

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Введение	7
Medit Link	7
Обзор сервиса	7
Облачный сервис	8
Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов	9

Medit Link > Установка

Системные требования	10
Системные требования для Windows	10
Системные требования для macOS	10
Системные требования для веб-сервиса	10
Рекомендуемые браузеры	10
Минимальные технические характеристики для мобильных устройств	10
Установка на Windows	11
Установка на macOS	14

Medit Link > Начало работы

Регистрация и вход в систему	18
Веб-сайт Medit Link	18
Регистрация	18
Вход в систему и страница приветствия	20

Medit Link > Веб-сервис Medit Link

Dashboard	22
Обзор Dashboard	22
Medit Insights	22
Подписаться на Medit Insights	23
Отписаться от Medit Insights	24
Patient	25
Поиск пациентов	25
Case Box/Work Box	26
Фильтрация проектов	26
Фильтрация по пациенту	26
Фильтрация по статусу	27
Фильтрация с использованием настроек периода	28
Фильтрация по поиску	28
Сведения о проекте	28
Order Box/In Box	30
Детали заказа	30
Вкладки в Order Box/In Box	30
Case Talk	31
Создание Case Talk	31
Установка типа разрешения и параметров общего доступа	32
Детали Case Talk	34
Web Viewer	34
Аннотация	35
Комментарии	36

Совместное использование экрана в режиме реального времени	37
Дерево данных	37
Элементы управления деревом данных	37
Элементы управления 3D-моделью	38
Partners	39
Поиск партнеров	39
Мои партнеры	39
Приглашение партнера	40
Membership	41
Подписка	41
Тарифный план	41
Облачное хранилище	42
Подписка	43
Отказ от подписки	45
Информация для выставления счетов	46
Как добавить способ оплаты	46
Как изменить способ оплаты	47
Использование промокода	48
Регистрация промокода	49
Активация промокода	49
My Info	51
Моя учетная запись	51
Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)	51
Мой сканер	52
Другое меню	53
Объявления и обновления	53
Связанные веб-сайты	53
Скачать приложение Medit Link	54

Medit Link > Приложение Medit Link

Обзор	55
В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.	55
Строка заголовка	56
Моя информация	56
Уведомления	56
Объявления и обновления	57
Настройки	57
Статус сетевого соединения	58
Настройки	60
Общие	60
Управление хранилищем	61
Установка периода	62
Локальное хранилище	62
Облачное хранилище	62
Установить подключенную программу	63
Параметры экспорта	63
Инструмент для преобразования проекта	65
Экспорт проекта	66
Импорт проекта	67
Параметры прокси	68
О программе	69
Руководство пользователя	69

Меню	70
Dashboard	70
Patient	70
Добавление нового пациента	71
Удаление пациента	71
Объединение пациентов	71
Case Box/Work Box	72
Вкладки в Case Box/Work Box	73
Функции в Case Box/Work Box	73
Order Box/In Box	74
Вкладки в Order Box/In Box	75
Case Talk	75
App Box	76
Все	76
Medit Apps	77
Скачано	77
Trash Box	77
Диспетчер синхронизации проектов	78
Загрузить	78
Скачать	78
Связанные веб-сайты	79
Просмотрщик файлов	80
Дерево данных	80
Инструменты управления моделью	80
Управление 3D-моделью	80
Управление 2D-изображением	81
Функциональные инструменты	82
Захват изображений и заметки	82
Ортодонтический захват	82
Заполнить дырки	83
Обрезка	84
Оптимизация сопоставления окклюзии	86
Движение нижней челюсти	88
Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов	89
Как управлять несколькими результатами	89
Параметры просмотра	91
Фильтры статуса	91
Тип просмотра	92
Группировка	92
Сортировка	92
Фильтрация и поиск	94
Фильтрация по пациенту	94
Фильтрация по дате	95
Расширенные возможности поиска	95
Medit Link > Рабочий процесс	
Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов	97
Создание проектов	97
Создание проекта в Case Box (клиника)	97
Создание проекта в Work Box (лаборатория)	98
Редактирование проектов	98
Редактирование проекта в Case Box (клиника)	98
Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)	99

Клонирование проектов	100
Клонирование проекта в Case Box (клиника)	100
Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)	100
Удаление проекта	101
Удаление проекта (клиника и лаборатория)	101
Информация формы	102
Регистрация информации формы в Case Box	102
Ввод на вкладке «Форма»	102
Регистрация информации формы в Work Box	102
Ввод на вкладке «Форма»	102
Соединение зубов в мост	102
Настройка параметров сканирования	103
Medit Scan for Labs	103
Общие параметры	103
Опции по зубам	103
Добавление в Избранное	103
Как добавить в Избранное	104
Управление избранными шаблонами	104
Работа по сканированию/CAD	105
Процесс сканирования	105
Процесс CAD	105
Использование дополнительных приложений	105
Добавление на панель «Быстрый запуск»	105
Управление запуском приложений	105
Быстрый запуск	106
Все приложения	106
Получение файлов результатов	107
Экспорт файлов результатов сканирования	107
Экспорт файлов результатов из списка проектов	108
Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов	110
Экспорт файлов результатов из дерева данных	112
Экспорт списка проектов в формате CSV	114
Экспорт линии края	114
Экспорт линии края в виде цвета	114
Экспорт линии края в виде файла	115
Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link	116
Case Box/Work Box	116
Web Viewer	117
Заказ/управление проектами	119
Заказ проектов	119
Подтверждение заказа (In Box)	120
Отменить заказ (Order Box)	120
Отклонить заказ (In Box)	120
Проверка заказанных проектов	120
Ввод информации о доставке (In Box)	121
Управление датой доставки	121
Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)	121
Установка ожидаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)	122
Завершение проекта	123
Завершение проекта (Work Box, In Box)	123
Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте	123
Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов	123
Завершение проекта (Case Box/Order Box)	124

Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box	124
Общение с помощью тегов	125
Добавление тегов при создании нового проекта	125
Добавление тегов при оформлении заказа	126
Просмотр тегов в сведениях о проекте	126

Введение

Medit Link

Medit Link – это инструмент для совместной работы, предназначенный для облегчения коммуникации между клиниками и лабораториями с целью оптимизации рабочего процесса для каждой из сторон.

Он предлагает дифференцированные возможности в зависимости от типа и разрешений каждой учетной записи. Программа предлагает удобный пользовательский интерфейс для управления рабочим процессом от сканирования с помощью внутриротовых и настольных сканеров и заказа проектов до разработки и производства протезов.

Medit Link включает в себя веб-сервис и компьютерное приложение.

Обзор сервиса

		Веб-сервис	Приложение
		- Регистрация и управление учетной записью - Поиск и управление партнерами - Обмен проектами через Web Viewer с помощью общей ссылки - Доступ к проектам, созданным в приложении - Управление заказами	- Ввод информации формы - Сканирование - Управление заказами - Связь с CAD - Ведение пациентов
Клиника	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашими клиниками, а также обмен проектами. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Ввод информации формы, сканирование, размещение заказов и ведение пациентов. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
Лаборатория	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашей лабораторией, а также обмен проектами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Ввод информации формы, сканирование и управление заказами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Облачный сервис

Medit Link поддерживает автоматическую загрузку/скачивание базы данных и файлов через AWS (Amazon Web Services).

Данные, хранящиеся в облаке, автоматически синхронизируются с компьютерами сразу нескольких пользователей организации, благодаря чему они могут получить доступ к одним и тем же данным в любое время и с любого компьютера. Облачное резервное копирование и последующее восстановление сохраненных файлов обеспечивают безопасность всех ваших данных. Ваши данные сохраняются в безопасности даже в случае их потери из-за внезапного сбоя компьютера.

Облачный сервис позволяет партнерским стоматологиям и лабораториям быстро обмениваться данными без необходимости пересылать отсканированные данные по электронной почте или вручную. Все данные, включая информацию о пациентах, надежно шифруются, хранятся и передаются. Medit соблюдает медицинское законодательство и правила, такие как HIPAA и GDPR.

Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов

Medit Link предлагает свою систему оформления заказов.

- Medit Link позволяет устанавливать партнерские отношения между стоматологами и зуботехническими лабораториями и быстро и легко обмениваться данными.
- Вы можете проверять и управлять статусом заказа.

Системные требования

Примечание

Пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями для Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs, если хотите использовать программное обеспечение для сканирования со своим сканером.

Системные требования для Windows

	Ноутбук и настольный ПК
Процессор	Intel Core i5 2,6 ГГц или выше
Оперативная память	16 GB или выше
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) или выше/или эквивалентная видеокарте AMD
ОС	Windows 10 64 Bit (недоступно для 32 Bit) или выше

Системные требования для macOS

	Mac
Процессор	M1 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
Оперативная память	16 GB или выше
ОС	Monterey 12 или выше

Системные требования для веб-сервиса

Рекомендуемые браузеры

	Браузеры
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Минимальные технические характеристики для мобильных устройств

	Android	iOS
Устройство	Эквивалент Galaxy S7 или выше	Эквивалент iPhone 7 или выше
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативная память	3 GB или выше	2 GB или выше
AP	Выше Snapdragon 710	A10 Fusion

Установка на Windows

Medit Link устанавливается в комплекте с программами сканирования – Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs.


1. Запустите Medit_LinkSetup.exe.
2. Выберите язык для установки.
3. Выберите папку для установки Medit Link. Пожалуйста, прочтите и согласитесь с положениями и условиями лицензии и нажмите «УСТАНОВИТЬ».

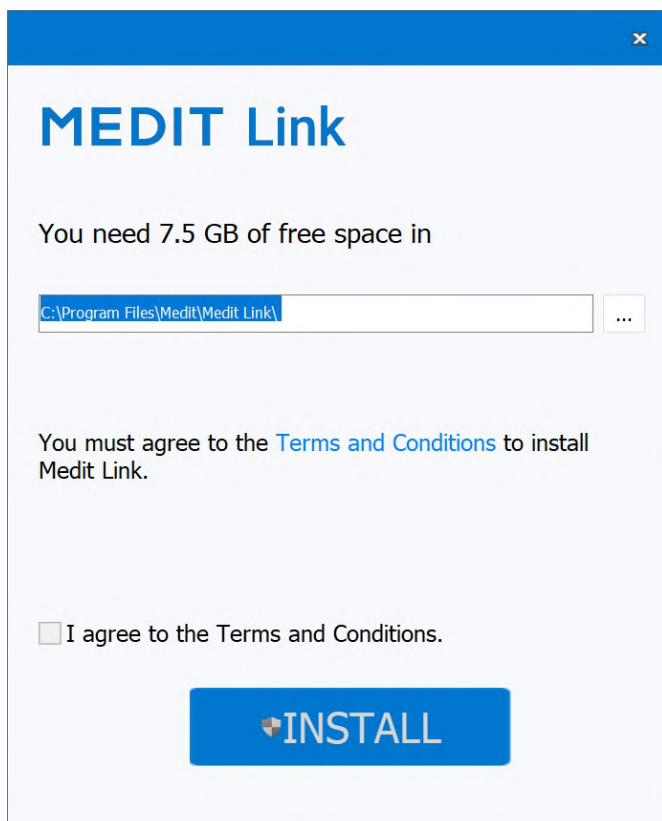

4. Убедитесь, что кабель сканера отключен от компьютера, прежде чем переходить к следующему шагу. Установка не будет продолжена, если сканер подключен к компьютеру.
5. Установка программы продолжится автоматически и может занять несколько минут. Не выключайте и не отключайте компьютер от сети до завершения установки.



6. После завершения установки перезагрузите компьютер. Если у вас нет сканера, можно продолжить работу без перезагрузки компьютера.

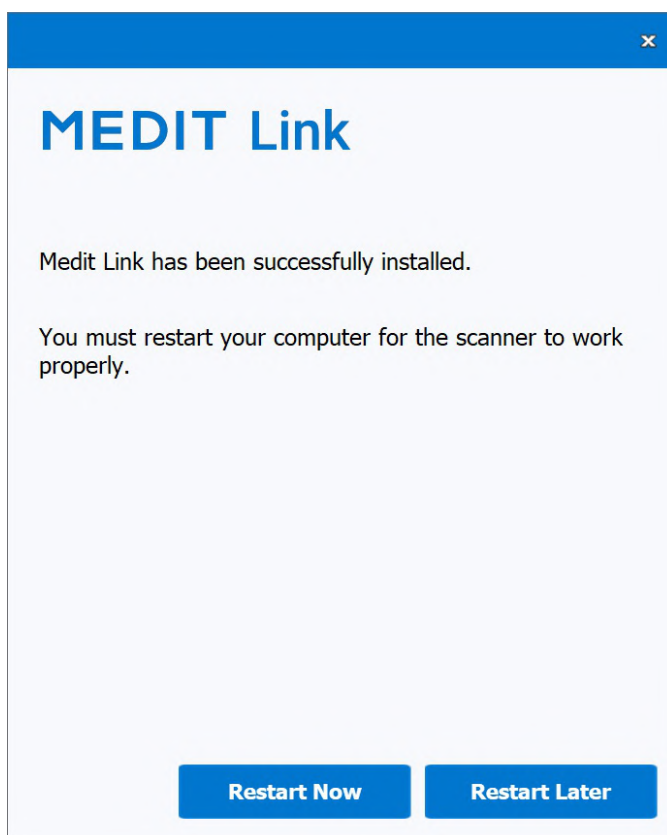


 Примечание

Если вы не перезагрузите компьютер после завершения установки, сканер может работать некорректно.


Установка на macOS

Medit Link устанавливается в комплекте с Medit Scan for Clinics.


1. Запустите Medit_Link_x.x.x.pkg и нажмите «Продолжить».

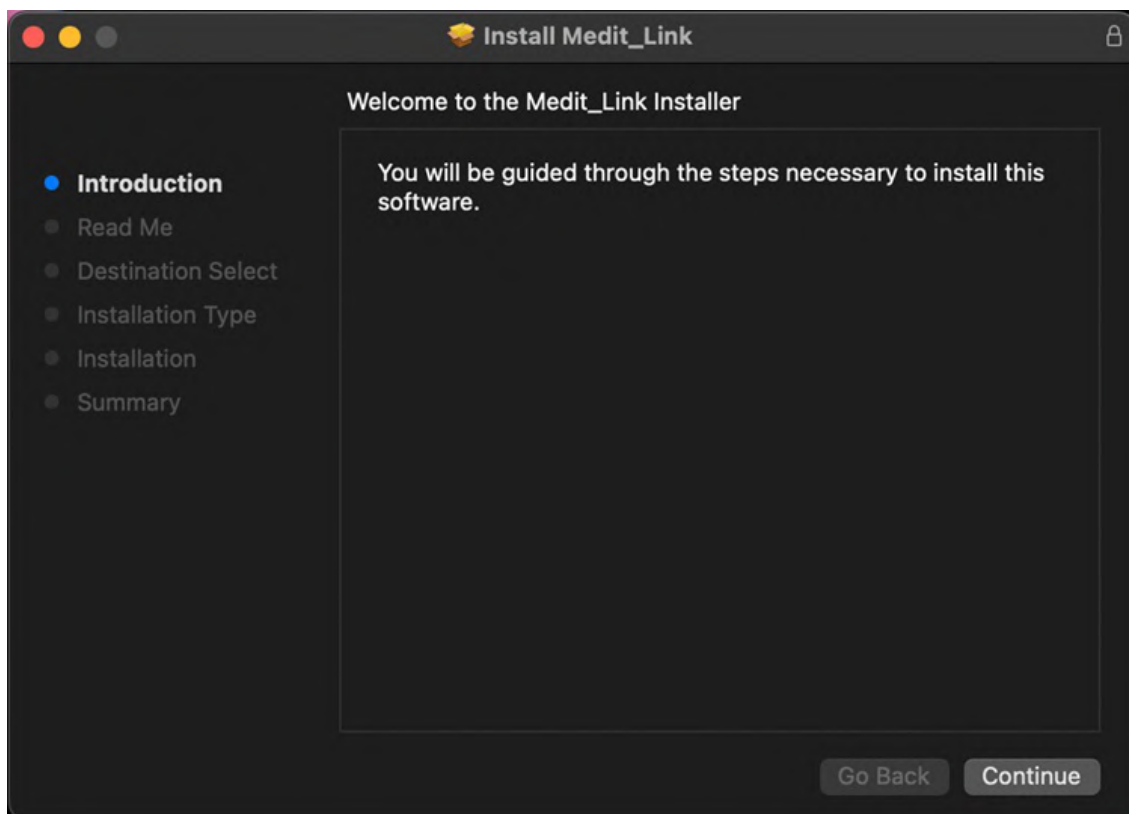


2. Прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите «Продолжить».

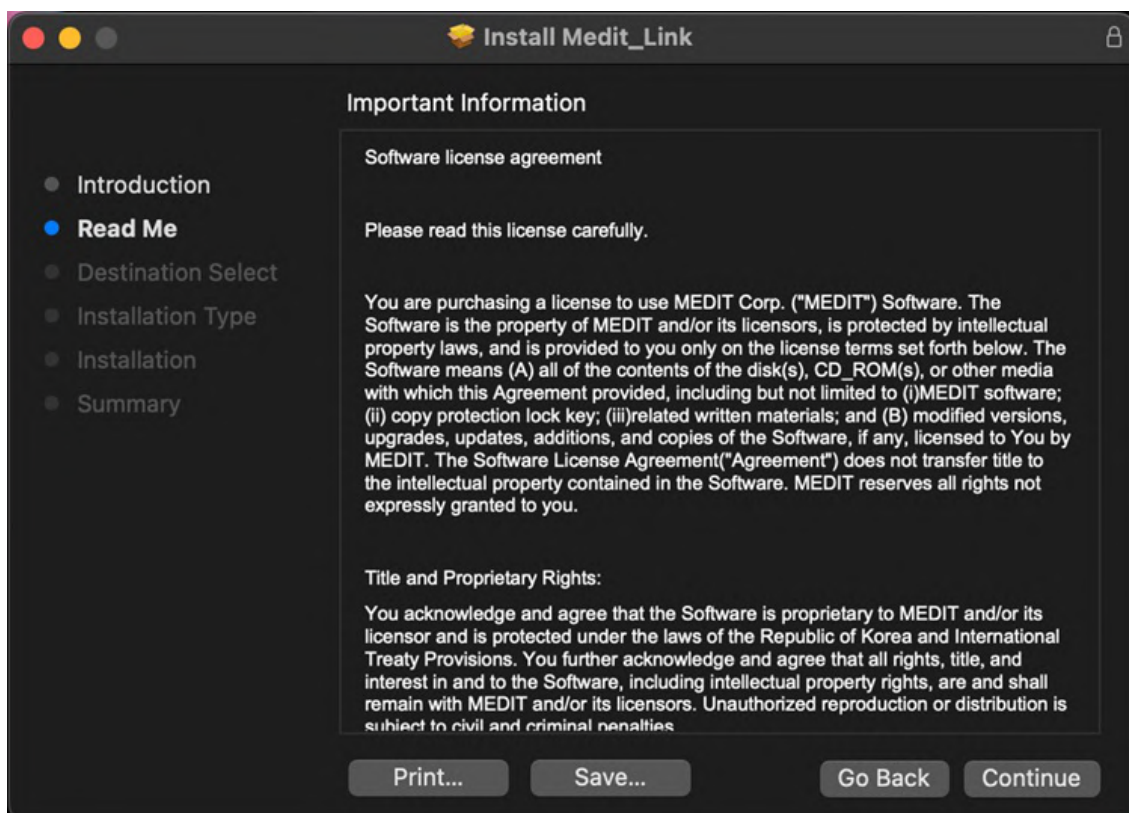

3. Выберите диск для установки и нажмите «Продолжить».

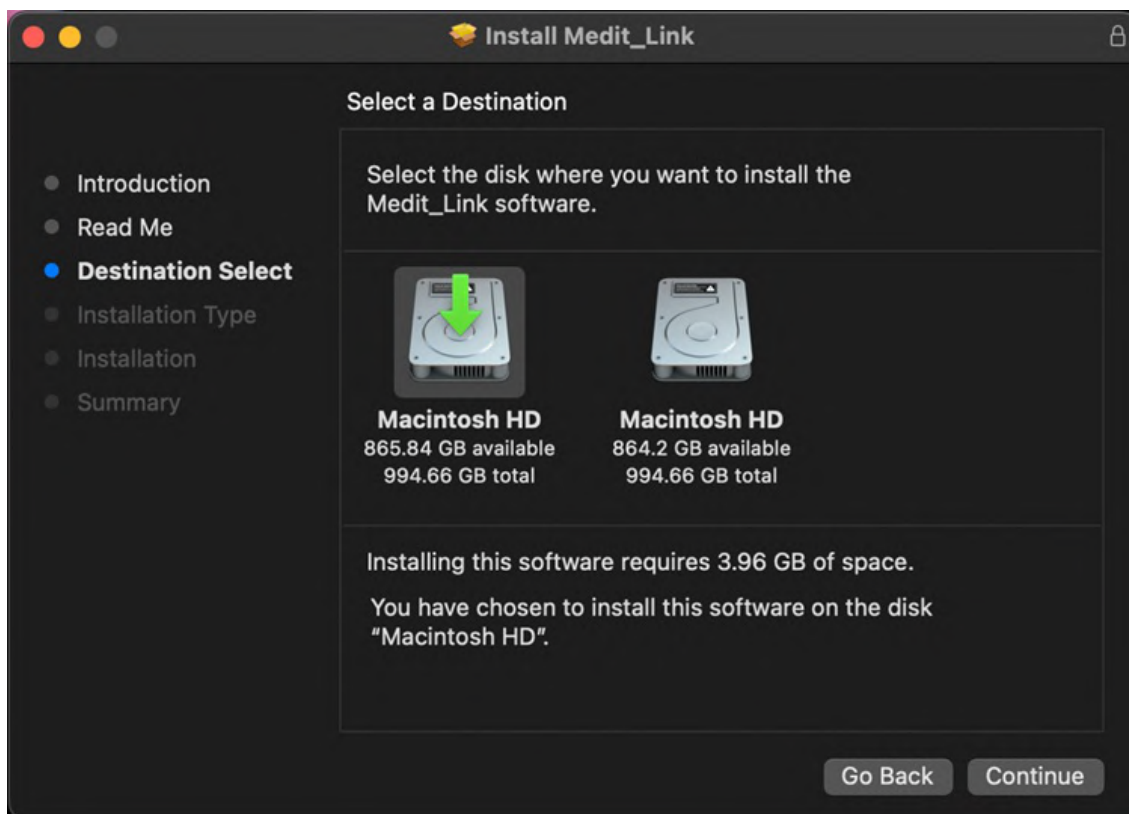


4. Чтобы изменить место установки, нажмите «Изменить место установки...».

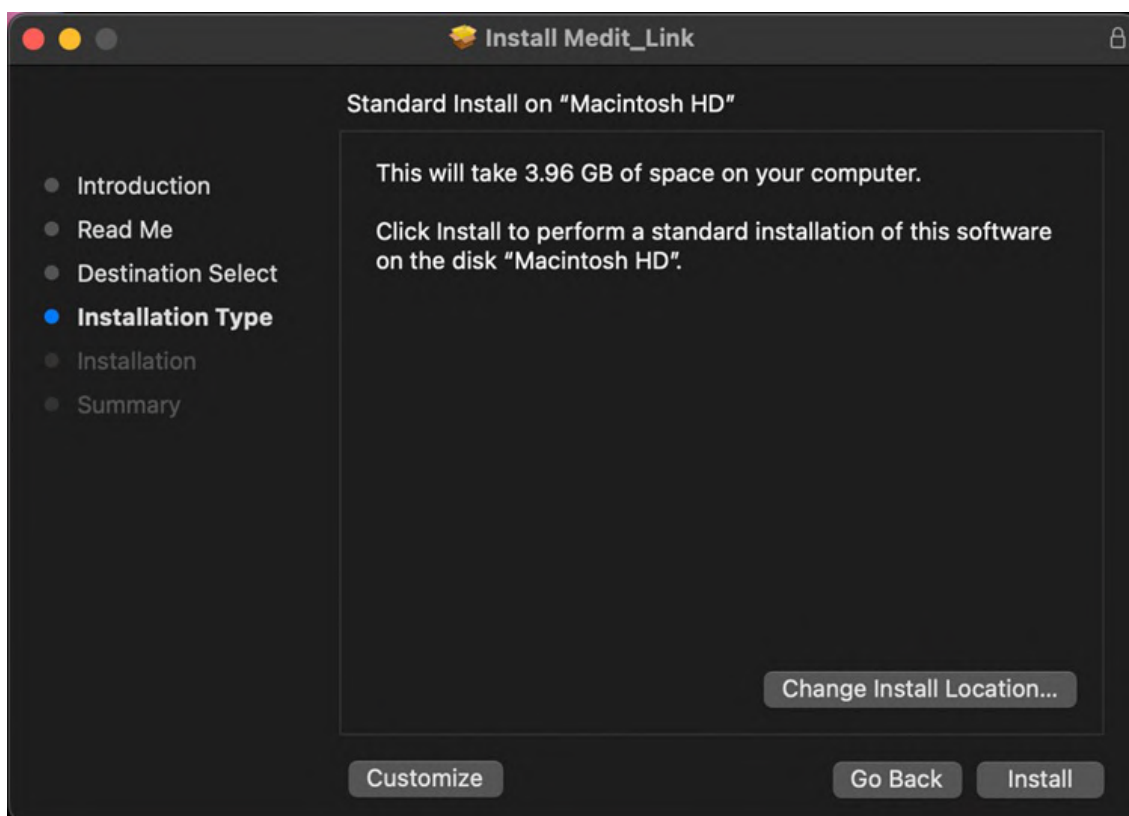


5. Нажмите «Установить» и введите свой пароль Мас, если он будет запрошен, для разрешения установки.



6. Дождитесь завершения установки.

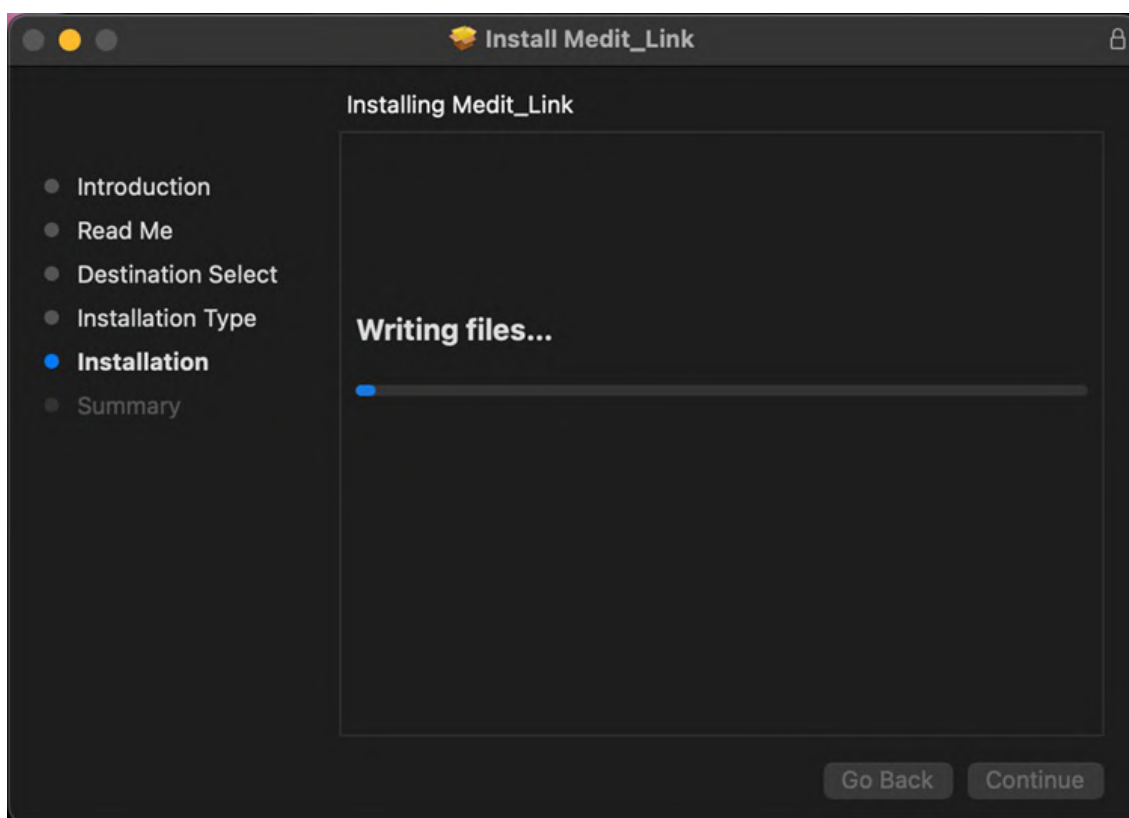


7. Нажмите «Закреть», чтобы закрыть окно установки.

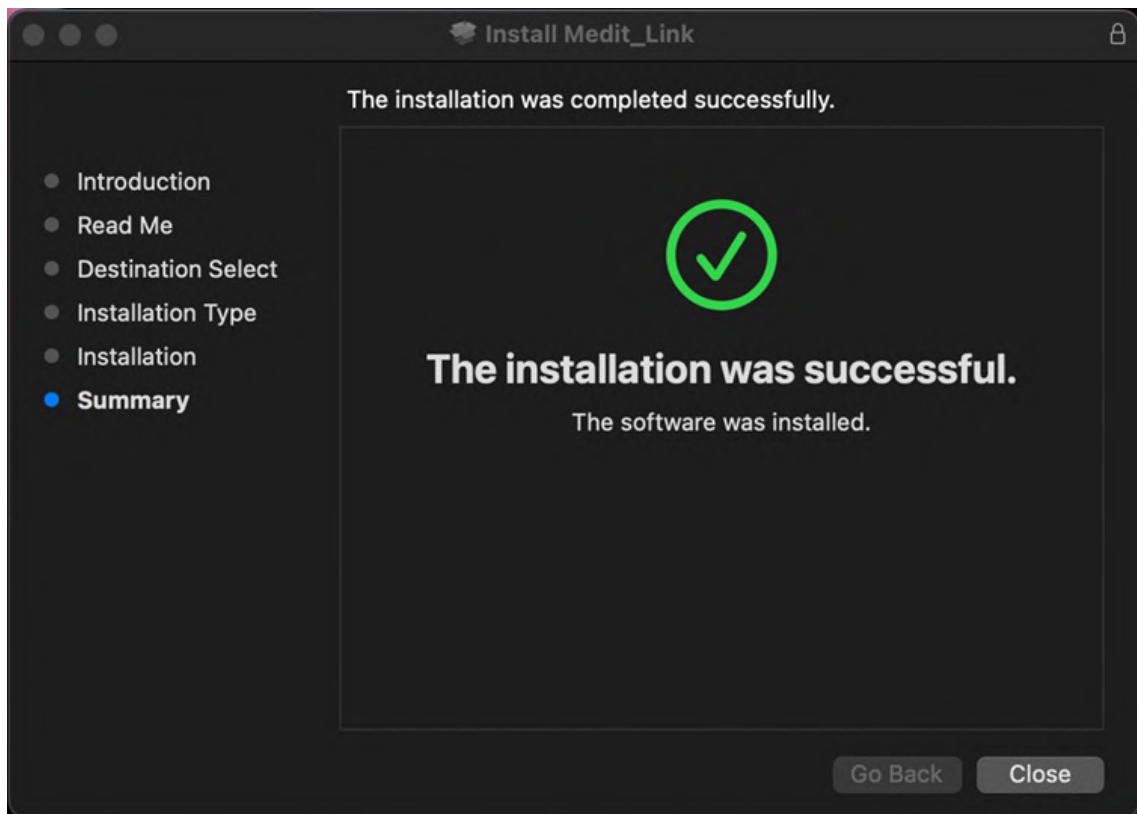

Регистрация и вход в систему

Веб-сайт Medit Link

Зарегистрируйтесь в сервисе Medit Link на сайте www.meditlink.com.

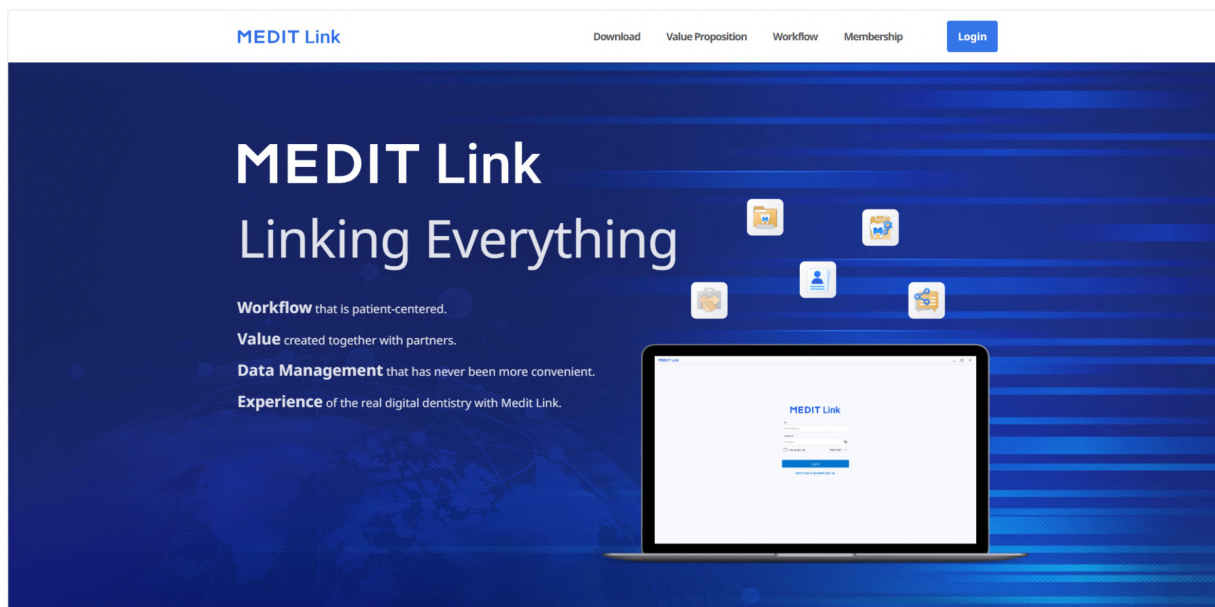

Примечание

Зарегистрируйтесь в Medit Link China на сайте www.meditlink.cn.

Регистрация

Для использования сервиса Medit Link вам необходимо зарегистрировать учетную запись. Вы можете использовать функции, предоставляемые в Medit Link, после создания учетной записи в качестве клиники или лаборатории.

Для регистрации подписки и использования сервиса с полными или ограниченными функциями и привилегиями, в зависимости от типа учетной записи, пользователи могут выбрать один из четырех следующих типов учетных записей:

- Клиника – Администратор
- Клиника – Пользователь
- Лаборатория – Администратор
- Лаборатория – Пользователь

Администратор обычно является представителем вашей организации и имеет неограниченный доступ ко всем функциям и сервисам Medit Link. В то время как пользователь – лишь к ее части.

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, выполните следующие действия:

1. Нажмите «У вас ещё нет учетной записи? Зарегистрироваться!» на странице входа в систему.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Прочтите предоставленные описания и нажмите кнопку «Зарегистрировать» для нужного типа учетной записи.

Create Your Medit Link Account



Clinic



Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. На экране появится следующая регистрационная форма.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Введите название клиники или лаборатории, а затем, в зависимости от типа вашей учетной записи, выполните следующие действия:
 - Если вы регистрируетесь как администратор, нажмите «Проверить доступность», чтобы узнать, доступно ли введенное вами название.
 - Если вы регистрируетесь как пользователь, нажмите «Поиск». Администратор должен зарегистрировать вашу организацию до вашей регистрации.
5. Заполните оставшуюся часть регистрационной формы и нажмите «Зарегистрировать».

Примечание

Если при регистрации вы дадите согласие на получение маркетинговой рассылки, то будете получать полезную информацию о продуктах и услугах компании Medit.

6. Вам будет отправлено письмо для верификации.
7. Чтобы завершить процесс регистрации, подтвердите свой адрес электронной почты, используя полученную ссылку.

Вход в систему и страница приветствия

1. Введите адрес своей электронной почты и пароль на странице входа в систему и нажмите «Авторизоваться».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

- Если вы не заполнили информацию о своей компании, появится следующее диалоговое окно.

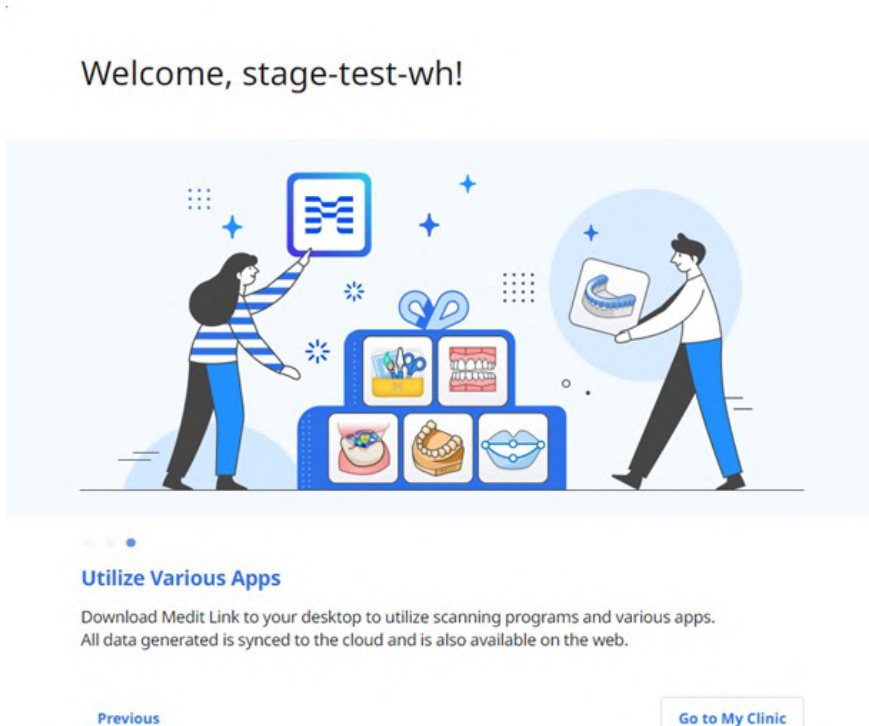

Примечание


Чтобы пользоваться услугами Medit Link, информацию о вашей клинике или лаборатории необходимо ввести, используя учетную запись администратора.

- Нажмите кнопку «Перейти в мою клинику» или «Перейти в мою лабораторию» и введите информацию о клинике или лаборатории, включая название компании, изображения обложки/логотипа, предлагаемые вами услуги, адрес офиса, номер кабинета и т. д.
- Информация, введенная на странице приветствия, может быть отредактирована в любое время в разделе My Info > Моя клиника или Моя лаборатория в веб-сервисе Medit Link.

Dashboard

Обзор Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

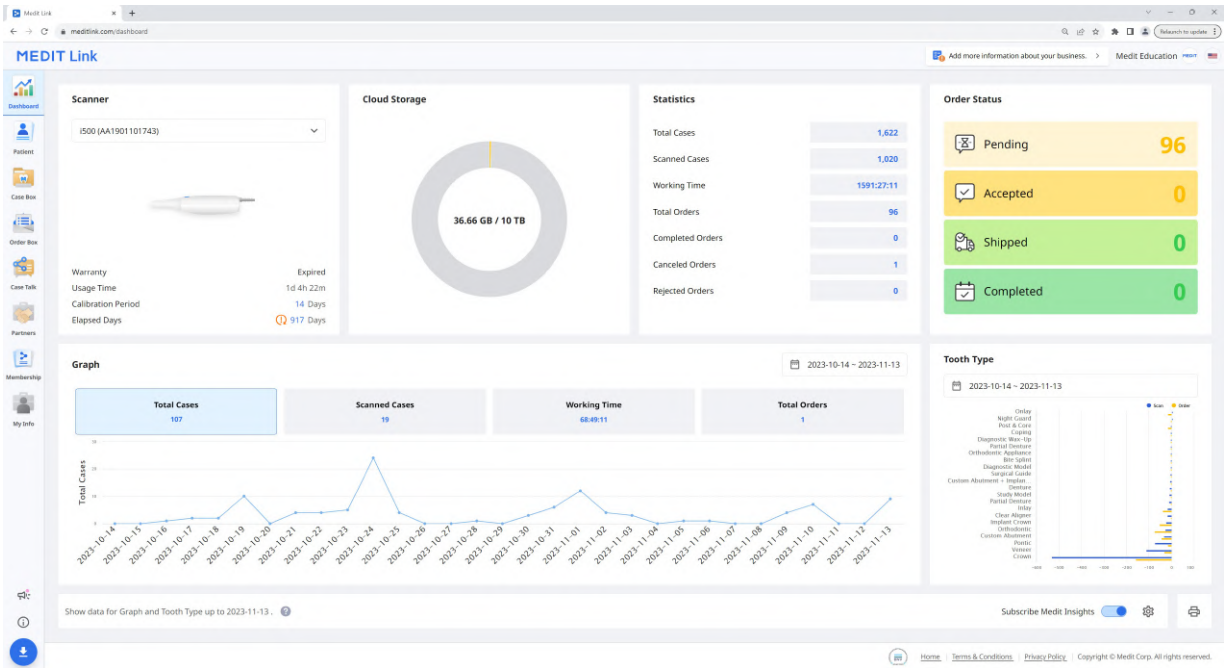

Графики и диаграммы в Dashboard отображают статистику всей работы, проделанной в Medit Link.

Сканер	Предоставляет информацию об активных сканерах, включая гарантию, время их использования, интервал калибровки и пройденное с момента последней калибровки время.
Облачное хранилище	Показывает общую емкость облака и используемый объем.
Общая статистика	Показывает статистику по проектам на основе рабочего статуса.
Статус заказа	Показывает статистику по проектам на основе статуса заказа.
График	Показывает графическое представление информации о работе по периодам.
Тип зуба	Показывает статистику количества сканирований и заказов на основе информации о лечении.


Medit Insights

Medit Insights – это сервис отчетов, который помогает вам анализировать статистику использования.

Примечание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Medit Insights

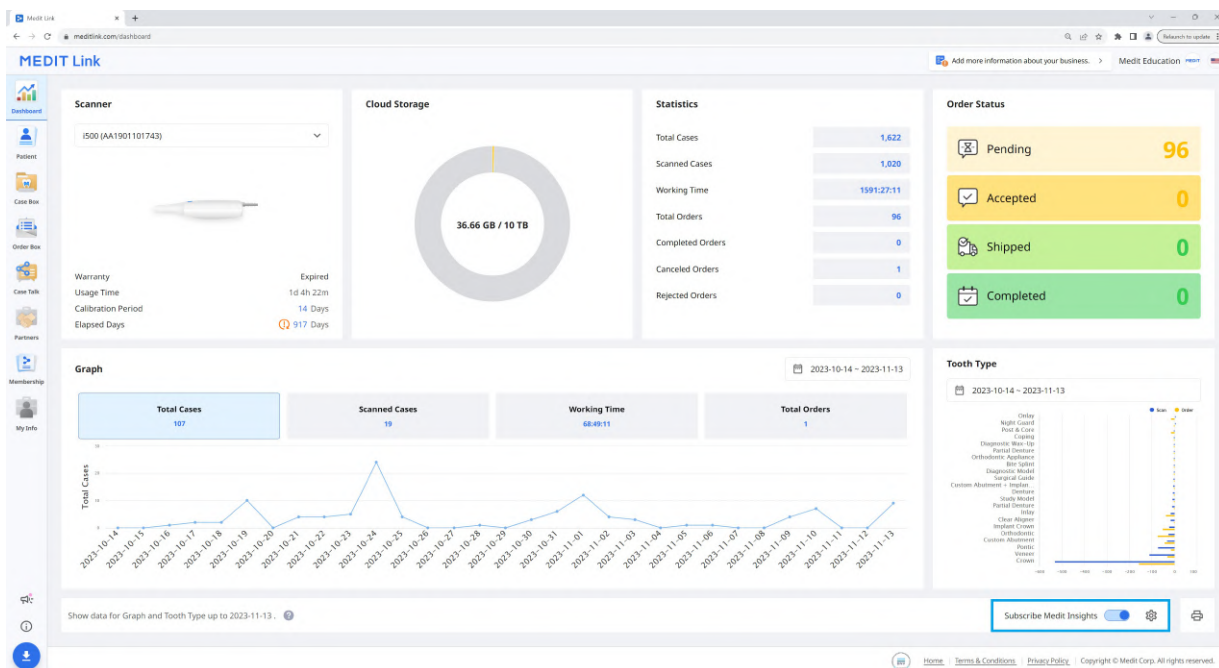

Подписаться на Medit Insights

Вы можете получать отчет по электронной почте второго числа каждого месяца. Дополнительный процесс регистрации не требуется. Просто активируйте «Подписаться на Medit Insights».

Если вы не используете адрес электронной почты, который ввели для учетной записи Medit Link, для получения отчетов от Medit Insights вы можете задать другой адрес электронной почты.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Вы будете получать электронное письмо со статистической отчетностью, как на изображении ниже, второго числа каждого месяца.

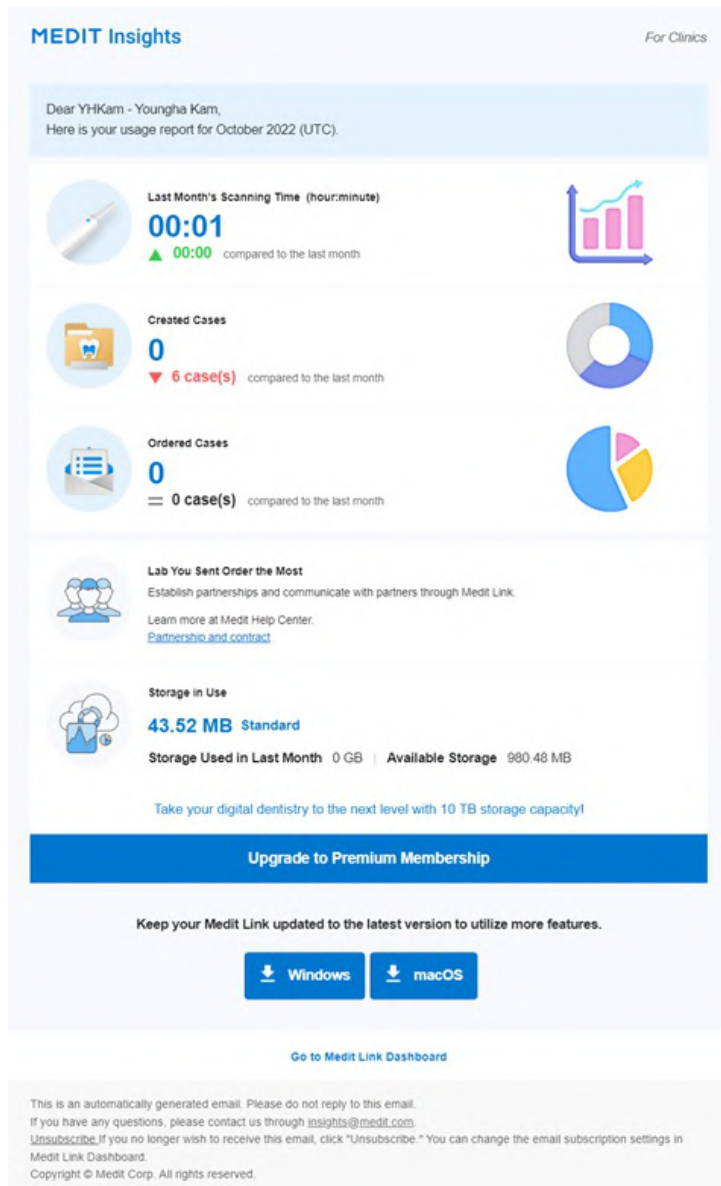

Баннер	Здесь Medit размещает полезные советы и информацию. * Если вы не хотите, чтобы баннер отображался, снимите флажок «Соглашение о маркетинге и продвижении» в разделе Моя информация > Моя учетная запись.
Статистическая информация	Здесь отображается такая статистическая информация как время сканирования, созданные проекты, лаборатория с наибольшим количеством заказов и т. п.
Скачать Medit Link	Эта кнопка содержит ссылку на скачивание Medit Link.
Dashboard	Вся статистическая информация основана на информации из вашего Dashboard. Более подробную информацию смотрите в Dashboard.


Отписаться от Medit Insights

Отключите «Подписаться на Medit Insights» в Dashboard или нажмите «Отписаться» в полученном письме.

Patient

Вы можете управлять проектами на основе имени и идентификатора пациента.


Все пациенты, зарегистрированные через приложение Medit Link, отображаются в виде списка, что облегчает управление пациентами и их проектами.

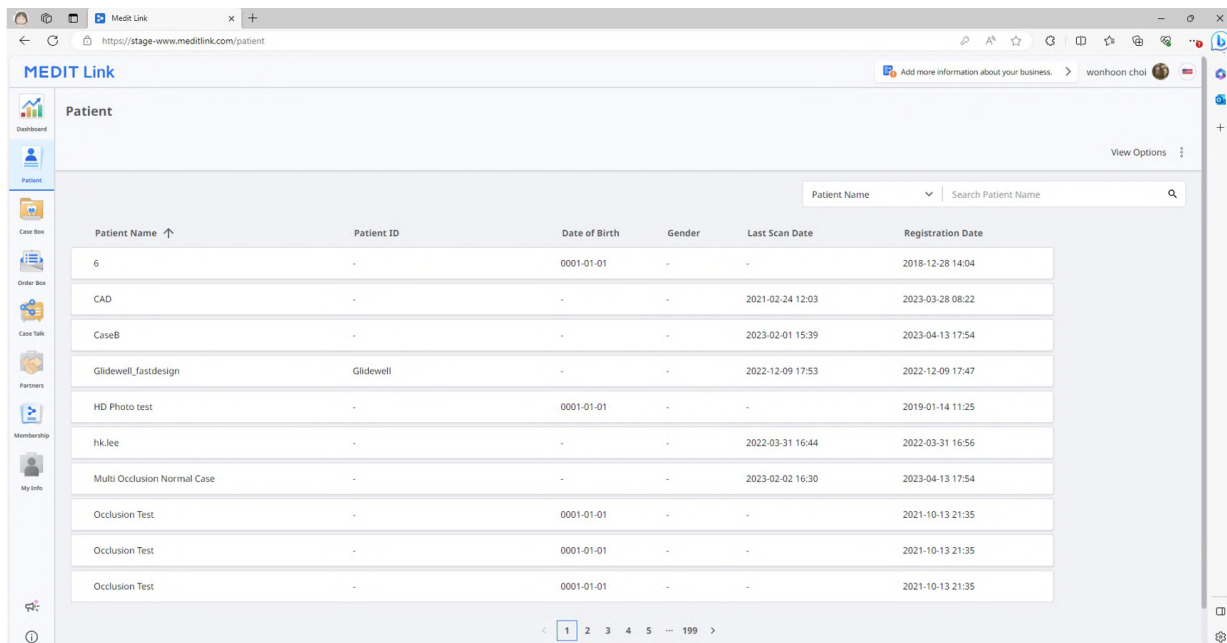

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Поиск пациентов


1. Выберите нужный критерий поиска между вариантами «Имя пациента» или «Идентификатор пациента» в выпадающем меню в правом верхнем углу списка пациентов.

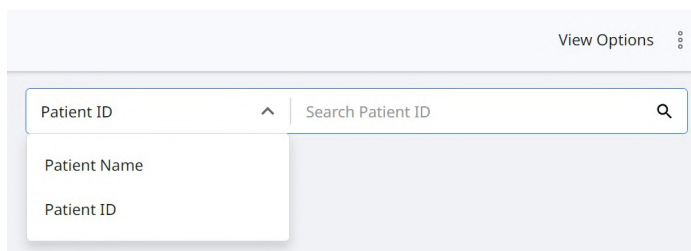

2. Введите имя или идентификатор пациента для поиска в соответствии с выбранными критериями поиска.
3. В списке будут отображены только те пациенты, имя или идентификатор которых вы ввели.

Case Box/Work Box

Case Box (клиника) или Work Box (лаборатория) показывают все проекты, созданные пользователем в приложении Medit Link. Вы можете просматривать файлы через веб-браузер без установки отдельной программы.

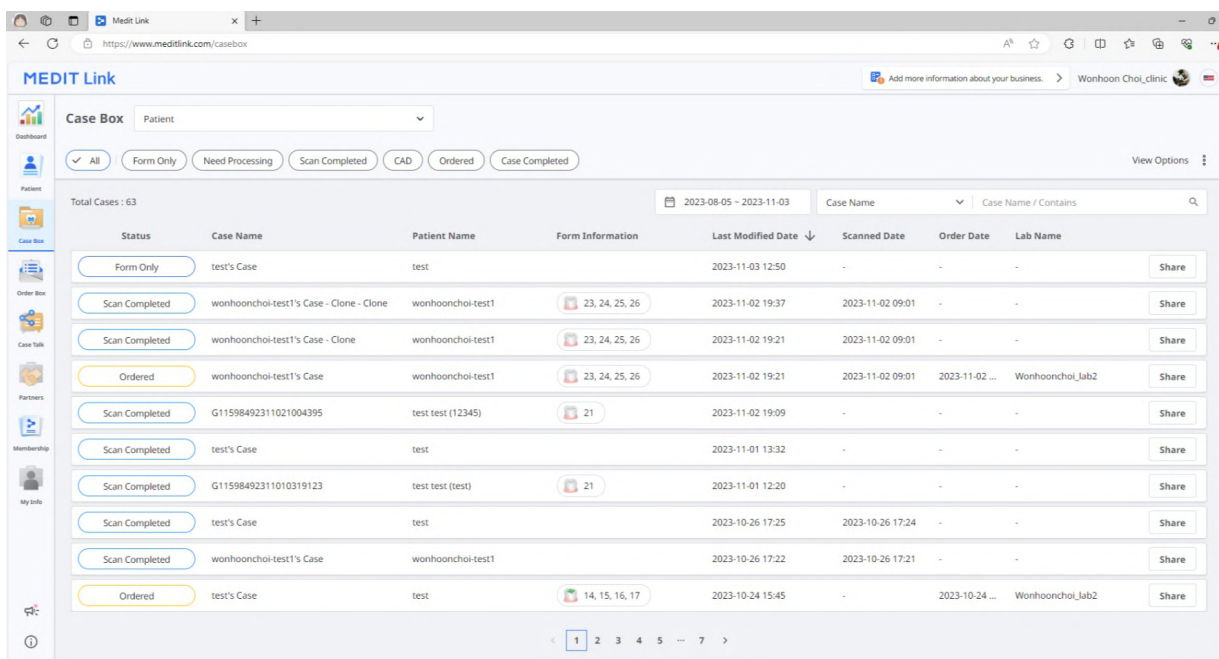


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a search bar with 'Patient' selected. Below it are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A date range filter shows '2023-08-05 - 2023-11-03'. A table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data. A sidebar on the left shows navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2


Фильтрация проектов

Фильтрация по пациенту

Вы можете фильтровать проекты по пациентам. Это удобно, когда вам необходимо найти проекты по какому-либо конкретному пациенту.

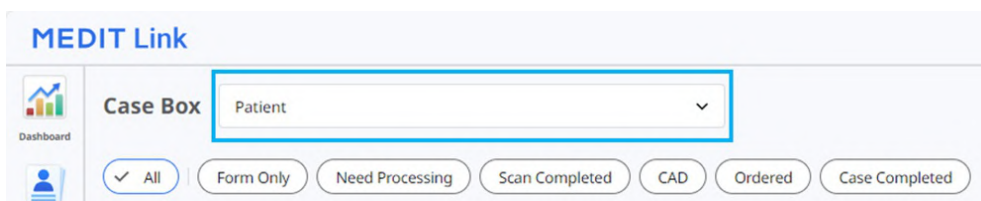

1. Введите имя пациента в поле поиска.

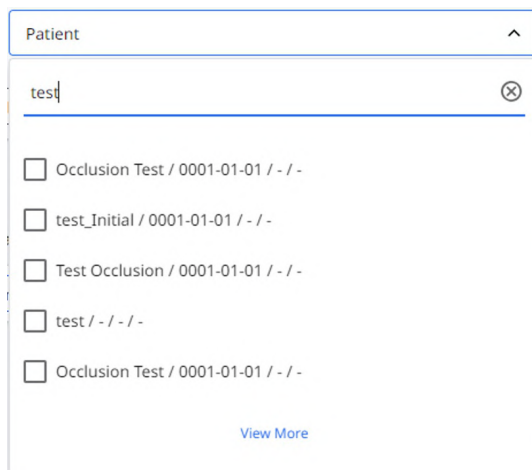

The screenshot shows the patient search dropdown menu. The search bar contains 'test'. Below it is a list of results, each with a checkbox and a label: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom.

2. Выберите пациента из списка результатов поиска.

3. В списке отображаются проекты только тех пациентов, которые были выбраны, что заметно упрощает поиск проектов, с которыми вы хотите работать.

Фильтрация по статусу

All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- В зависимости от типа учетной записи доступны следующие типы статусов:

Case Box (клиника)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (лаборатория)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Фильтрация с использованием настроек периода

Вы можете фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного вами периода.

1. Задайте период времени.



2. Выберите диапазон.

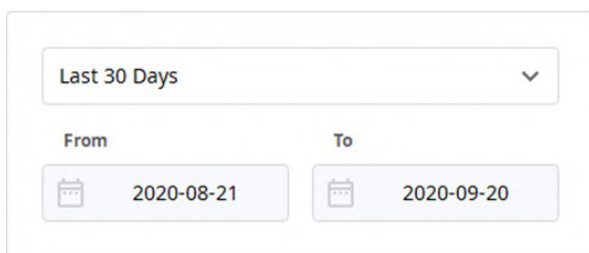


- Все: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, изменения в которые были внесены в этот период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Последние 90 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 90 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты за текущий месяц.
- Предыдущий месяц: показывает проекты за прошедший месяц.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Фильтрация по поиску


Вы можете использовать возможности поиска, чтобы легко и быстро найти необходимую информацию.

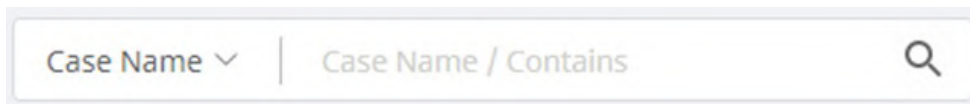

В зависимости от типа учетной записи доступны следующие параметры поиска:

Case Box (клиника)	Название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории
Work Box (лаборатория)	Название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа

Сведения о проекте

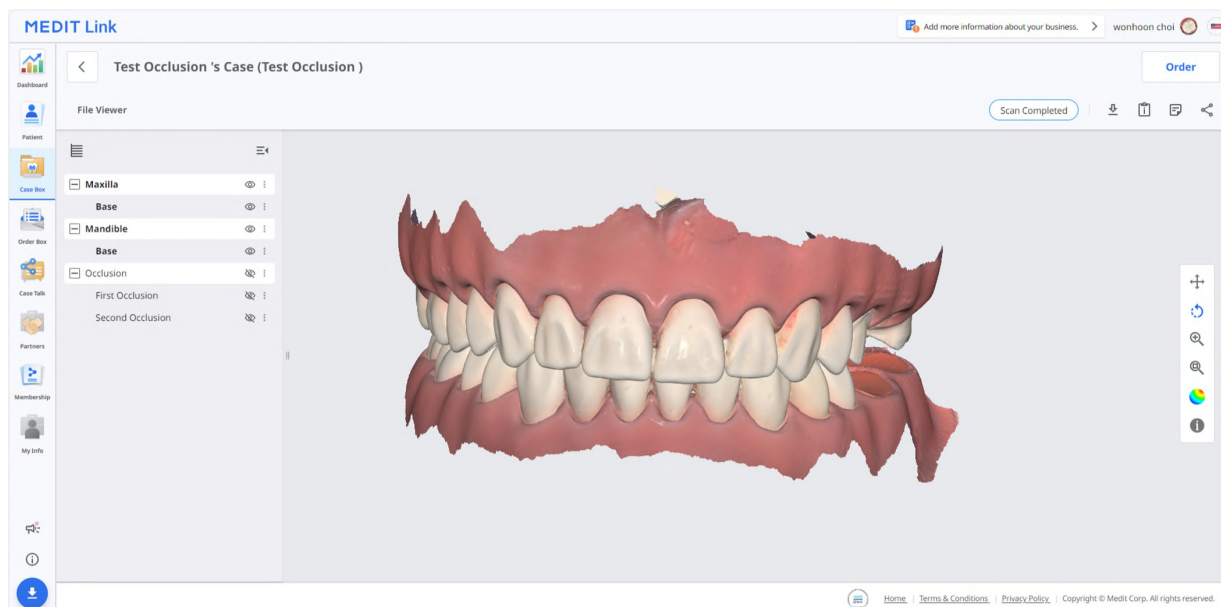

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие инструменты управления проектом:

	Статус проекта	Показывает статус проекта.
	Перейти в Order Box/In Box	Создает ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Скачать	Скачивает файлы из проекта на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. С этой ссылкой пользователь может получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ.

Order Box/In Box

Order Box (клиника) или In Box (лаборатория) отображают проекты, заказанные в приложении Medit Link.

Детали заказа

The screenshot shows the 'Order Box' interface in the Medit Link application. The main form displays order details for 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)'. The form includes fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-27), Order Date (2023-04-20 PM 02:08), Requested Delivery Date (2023-04-27), and Expected Delivery Date (2023-04-27). A table on the right lists the order items with columns for No., Type, Method, Material, and Shade. The table contains four rows of data, all with 'Inlay' type and 'Multi-Layered ZI...' material. The interface also includes a sidebar with navigation options and a top bar with a 'Cancel Order' button.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered ZI...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered ZI...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered ZI...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered ZI...	None

- | | |
|---|--|
| 1 | Название проекта и имя пациента. |
| 2 | Функции для управления заказом (прием/отмена; доставка/получение). |
| 3 | Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов». |
| 4 | Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п. |
| 5 | Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги. |
| 6 | Информация о заказанном продукте и статусе доставки. |


Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация о заказе, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

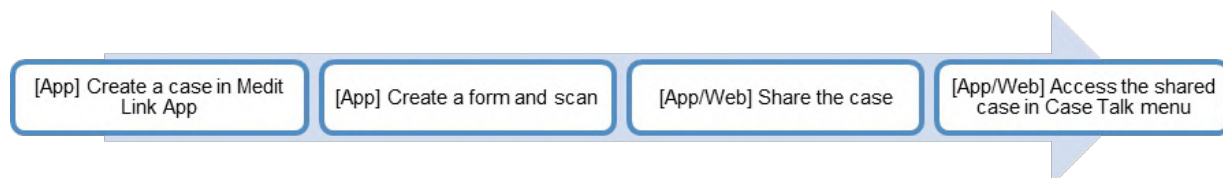


Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.


Создание Case Talk

Вы можете создать общую ссылку на проект, который был создан в Case Box/Work Box.

1. Найдите проект, которым хотите поделиться, и нажмите кнопку «Поделиться» справа.

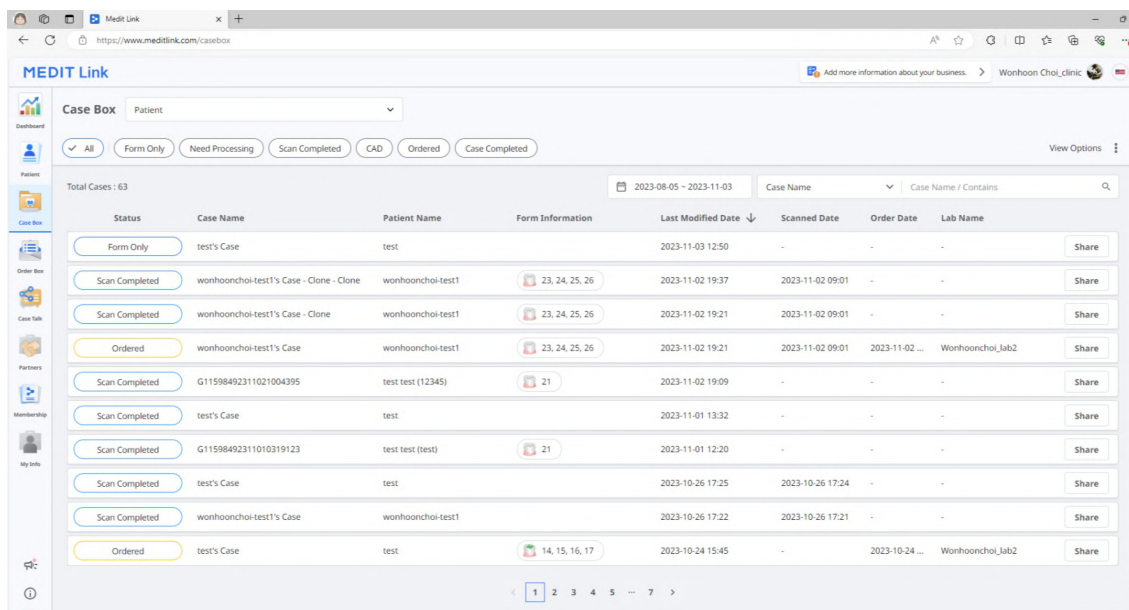

2. Выберите файлы, которыми хотите поделиться.

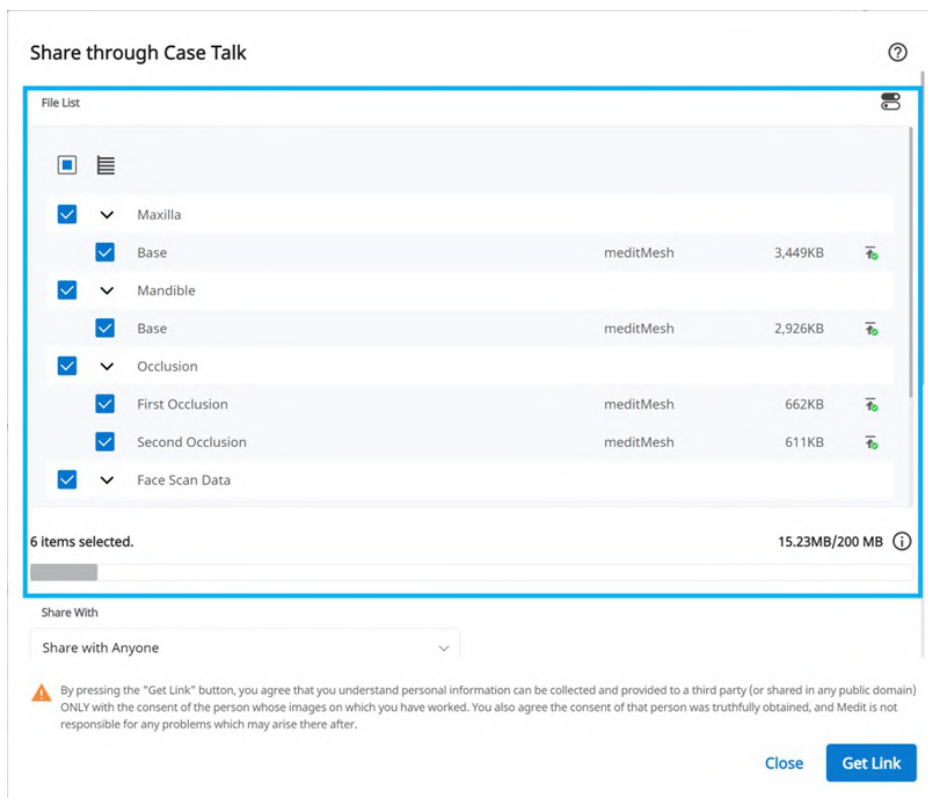


3. Установите тип разрешения и параметры общего доступа.
4. Нажмите «Создать ссылку», чтобы создать общую ссылку.

Установка типа разрешения и параметров общего доступа

Поделиться с	• Поделиться со всеми Создает общую ссылку. Вы можете поделиться файлами с кем угодно. • Поделиться с определенными людьми Создает и отправляет общую ссылку определенным пользователям.
Поделиться через	При выборе варианта «Поделиться с определенными людьми» вы можете поделиться с ними общей ссылкой различными способами: • Адрес электронной почты • SMS • Партнеры
Дата окончания срока действия	Установите дату окончания срока действия ссылки. После его окончания люди, с которыми вы поделились ссылкой, больше не будут иметь доступ к файлам. Срок действия ссылки можно продлить до 90 дней, начиная с текущего дня.
ПИН-код	Установите 6-значный код доступа для обеспечения безопасности данных.
Поделиться именем пациента	Если вы отметите эту опцию, увидеть имя пациента смогут все пользователи, у которых есть ссылка.
Предоставить разрешение на скачивание	Если вы отметите эту опцию, все пользователи, у которых есть ссылка, смогут скачать файлы.
Разрешить комментарии	• При выборе этого параметра вы сможете обмениваться информацией по общей ссылке. • Если отключить этот параметр, получатель сможет только просматривать ваши комментарии без возможности добавлять свои собственные.
Комментарий	Вы можете оставить сообщение в секции комментариев.

Детали Case Talk

Вы можете просматривать файлы в проекте с общим доступом. На странице деталей Case Talk доступны следующие функции:

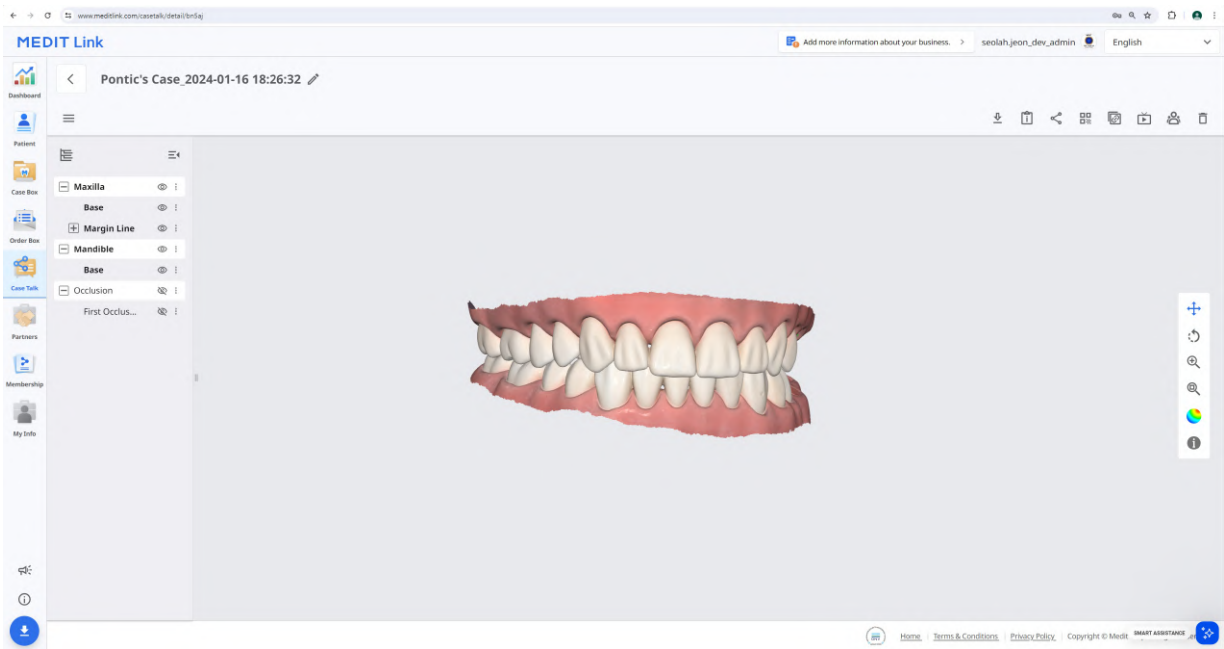

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	QR-код	Поделитесь проектом с помощью QR-кода.
	Копировать ссылку	Копирует общую ссылку в буфер обмена. Скопированная ссылка показывает в вашем веб-браузере файлы общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, которые получили доступ к общей ссылке.
	Удалить	Удаляет общую ссылку. Удаленная общая ссылка больше недоступна.

Примечание


Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Web Viewer

Вы можете использовать веб-браузер для просмотра совместно используемых данных в Case Talk.

Общайтесь с пользователями, имеющими доступ к ссылке, с помощью аннотаций и комментариев.

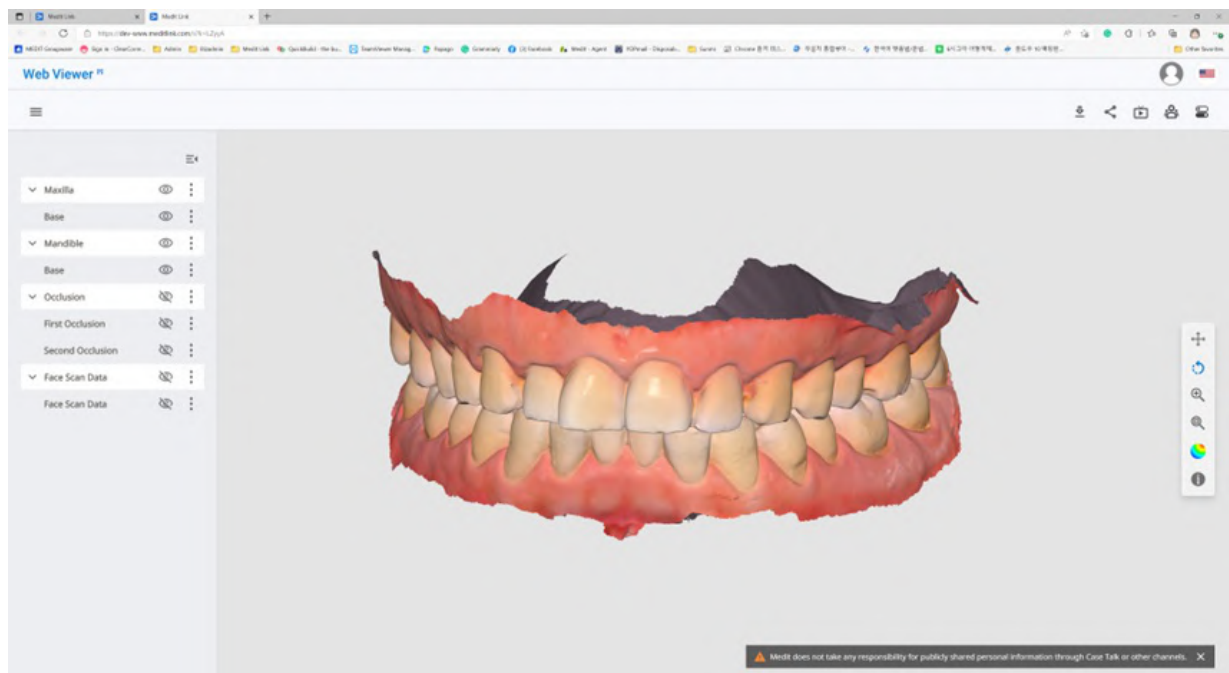

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	QR-код	Копирует общую ссылку в буфер обмена. Скопированная ссылка показывает в вашем веб-браузере файлы общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, подключившихся к общей ссылке.
	Маркировка зуба	Изменяет систему маркировки зубов.


Примечание

Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Аннотация

Вы можете добавлять аннотации к выбранному участку 3D-модели. Добавленные аннотации могут быть просмотрены любым пользователем, имеющим доступ к ссылке.

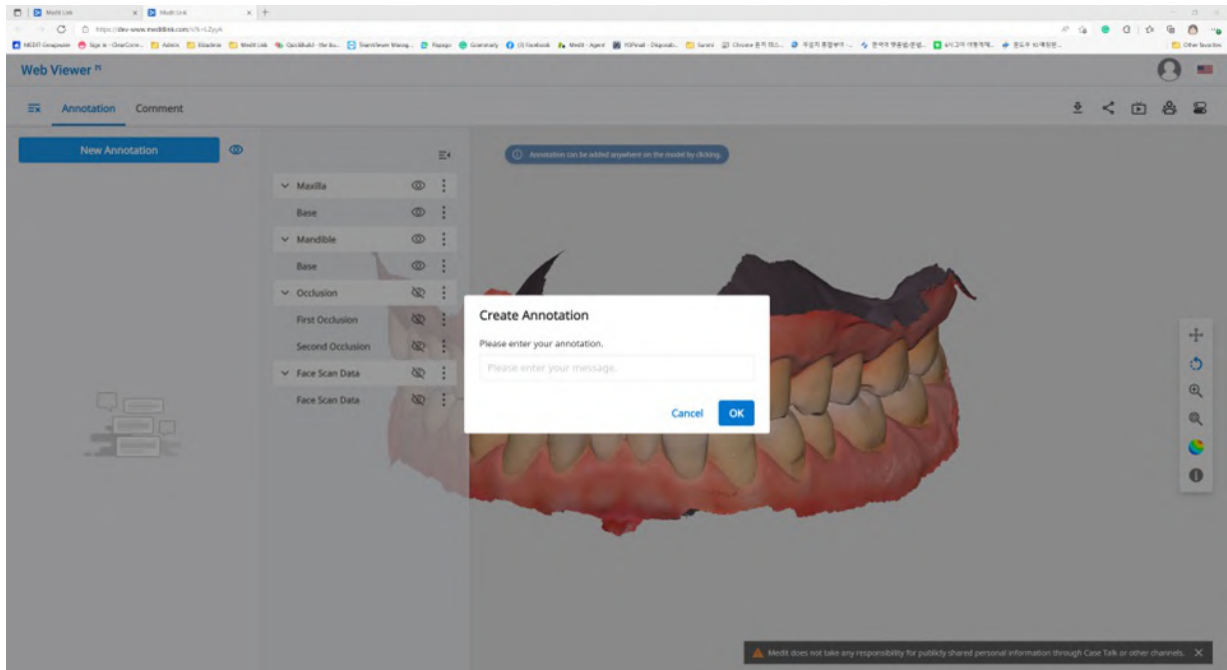

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Аннотация

1. Найдите значок меню в левом верхнем углу и выберите вкладку «Аннотация». Используйте кнопку «Новая аннотация», чтобы добавить аннотацию в любое место данных одним щелчком мыши.
2. Введите сообщение, затем нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить ее.

3. Вы можете использовать аннотации как простой канал связи. Щелкните созданную аннотацию, чтобы ввести ответ, и нажмите «Отправить».

Комментарии

Вы можете общаться с пользователями, имеющими доступ к ссылке, через вкладку «Комментарий» в меню Web Viewer.

Примечание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- [Комментарий](#)

Совместное использование экрана в режиме реального времени

Вы можете поделиться своим экраном в режиме реального времени.

Примечание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- [Режим реального времени](#)

1. Нажмите «Режим реального времени», чтобы поделиться своим экраном Web Viewer с подключенными пользователями.





2. Нажмите «OK», чтобы начать совместное использование экрана.
3. Пользователи, которые получили доступ к ссылке, должны согласиться на совместное использование экрана.
4. Экран пользователя, инициировавшего совместное использование экрана, синхронно отображается с экраном пользователя, получившего запрос.



Дерево данных

Все данные группируются и отображаются в соответствии с атрибутами в дереве данных. Вы можете показывать или скрывать данные, настраивать прозрачность и т. д.

Элементы управления деревом данных

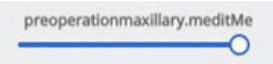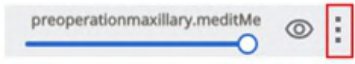Показать / Скрыть	Нажмите на значок глаза, чтобы отобразить или скрыть данные. Управляйте видимостью данных в виде группы или отдельного файла.
Непрозрачность	Наведите курсор мыши на видимый элемент, чтобы увидеть ползунок для настройки прозрачности. Используйте его, чтобы изменять прозрачность ваших данных. 
Расширенное меню	Расширенное меню находится справа от каждого элемента дерева данных. Оно включает следующие параметры:  • Показывать только это: скрывает все другие данные, кроме текущих. • Скрыть: скрывает текущие данные.

Элементы управления 3D-моделью

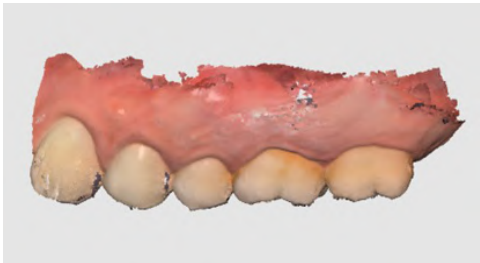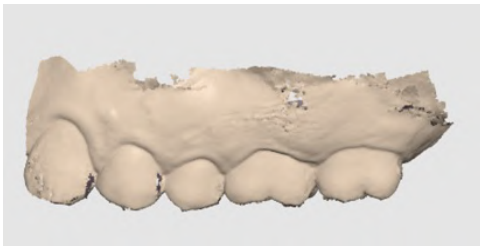	Панорамировать	Перемещает модель.
	Повернуть	Поворачивает модель.
	Увеличить/уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
	Режим отображения модели	Отображает данные в реальных цветах текстуры. 
		Отображает данные одним цветом. 

Partners

Вы можете искать потенциальных партнеров, чтобы запросить партнерство, а также просматривать список текущих партнеров.


Примечание

Сервисы, использующие Google Maps, недоступны в Medit Link China.

Поиск партнеров


Поиск пользователей Medit Link можно осуществлять по названию и/или адресу их организации.

По результатам поиска вы можете отправить запрос на партнерство той компании, с которой хотели бы работать.

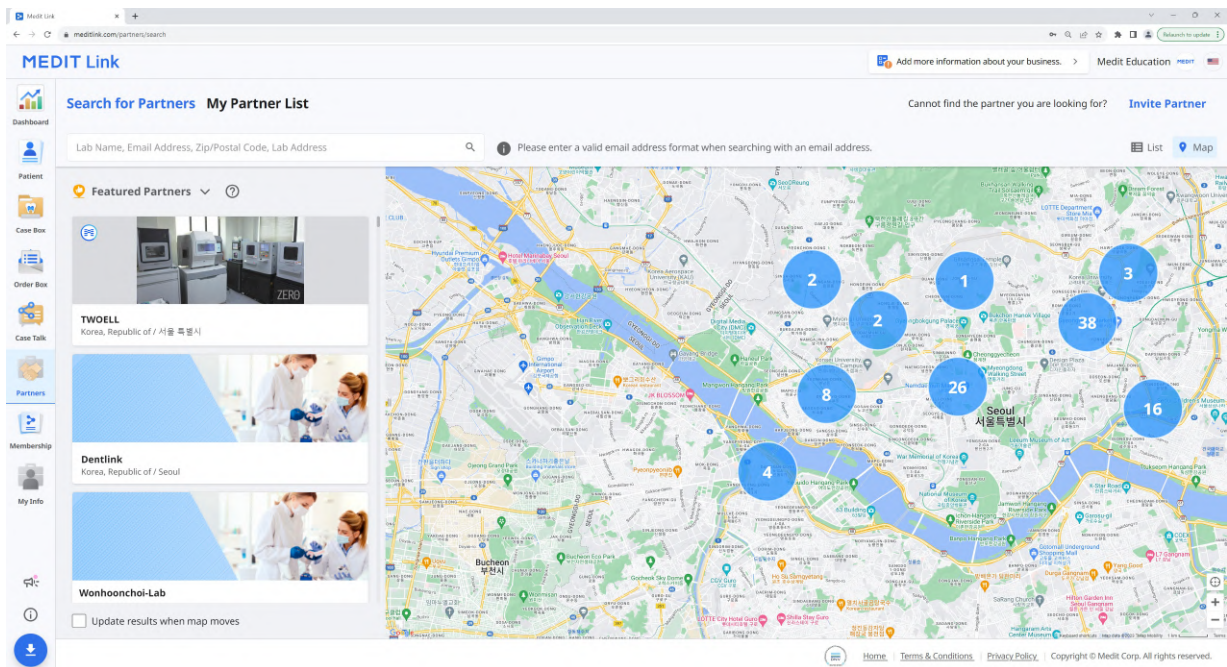

Мои партнеры

В разделе «Мои партнеры» вы можете просмотреть свои текущие партнерские отношения со всеми существующими компаниями-партнерами.

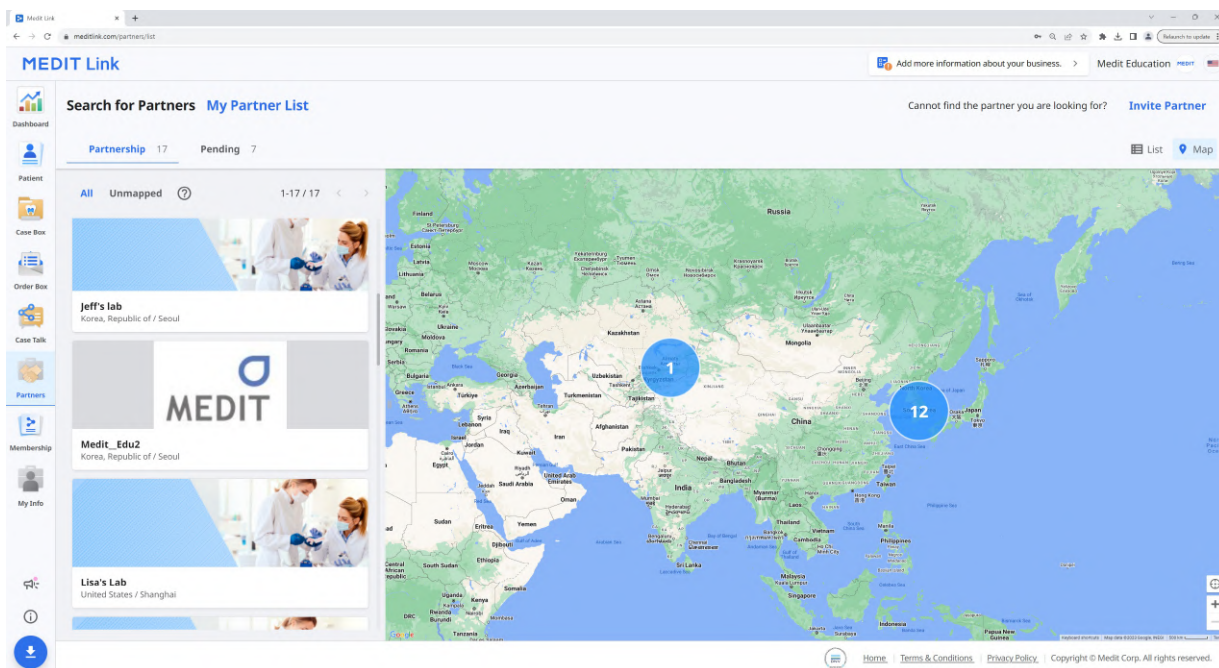

Приглашение партнера

Если у вас есть клиника или лаборатория, с которыми вы хотите работать, вы можете пригласить их присоединиться к Medit Link. Партнерство будет создано автоматически, как только эта организация примет приглашение.

1. Нажмите «Пригласить партнера» в левом верхнем углу экрана.
2. Введите адрес электронной почты компании, с которой вы хотите работать, и отправьте ей приглашение с запросом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Как только приглашенная организация примет приглашение и зарегистрируется в Medit Link, партнерство будет установлено автоматически.


Membership

Подписка

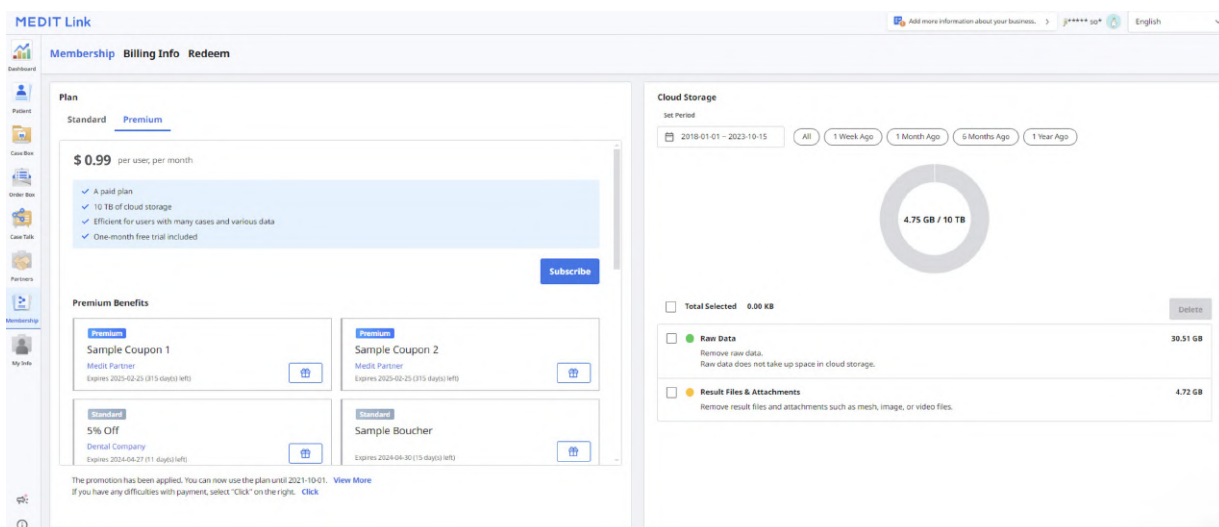

Тарифный план

Вы можете ознакомиться с тем, что предлагает каждый тарифный план, включая купоны на скидку и ваучеры, а также просмотреть текущий статус своей подписки. Кроме того, в любой момент вы можете обновить тарифный план или отменить подписку.

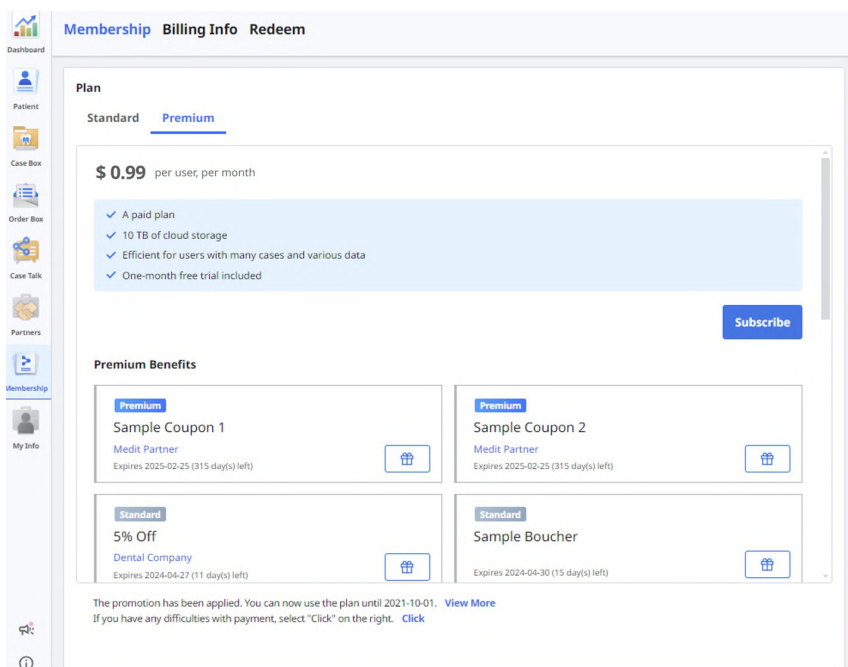

Medit Link предлагает следующие тарифные планы:

Standard

- Бесплатный стандартный тарифный план для всех зарегистрированных пользователей
- 1 GB облачного хранилища
- Для новых пользователей

Premium

- Платный тарифный план
- 10 TB облачного хранилища
- Для пользователей с большим количеством проектов и различных данных
- Бесплатная пробная версия на один месяц


	Standard	Premium
Облачное хранилище	1 GB	10 TB
Ежемесячная оплата	Бесплатно	\$0,99/месяц
*Необработанные данные не будут учитываться при расчете занятого объема облачного хранилища.		

Примечание

Тарифные планы будут доступны в Medit Link China. Вы можете получить тарифный план Premium бесплатно до его официального выхода.

Облачное хранилище

В правой части окна вы можете управлять своим облачным хранилищем.

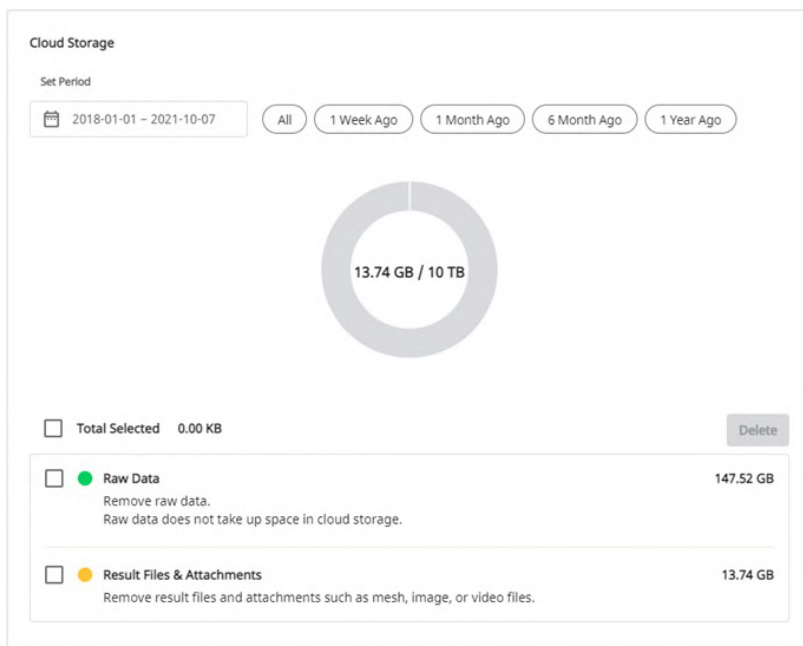


Установка периода	Установите определенный период для удаления данных, созданных в течение этого периода времени. • Все: показывает все файлы. • 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя. • 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц. • 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев. • 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.
Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Однако, при необходимости, отсюда можно управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложения занимают место в облаке. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Подписка


Если в настоящее время вы используете тарифный план Standard или тарифный план Premium с промокодом, вы можете подписаться на тарифный план Premium.

Оплата осуществляется с помощью сервиса Stripe (www.stripe.com).

1. Перейдите в раздел Подписка > Тарифный план > Premium и нажмите кнопку «Подписаться».

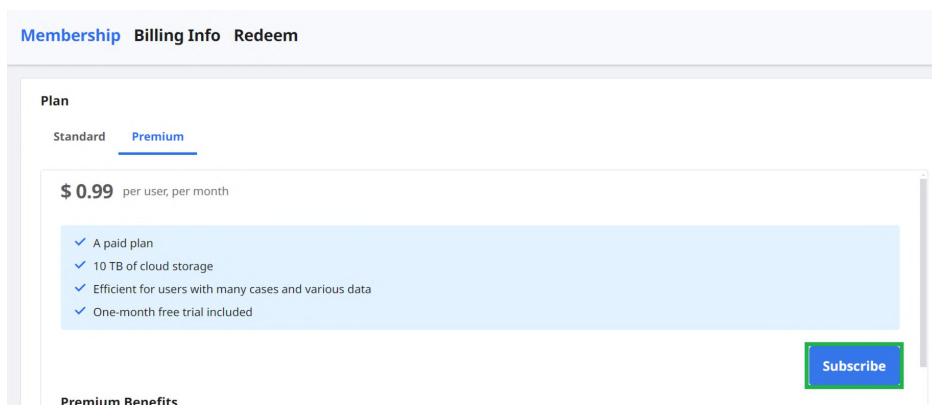

2. Просмотрите описание тарифного плана Premium и снова нажмите «Подписаться».

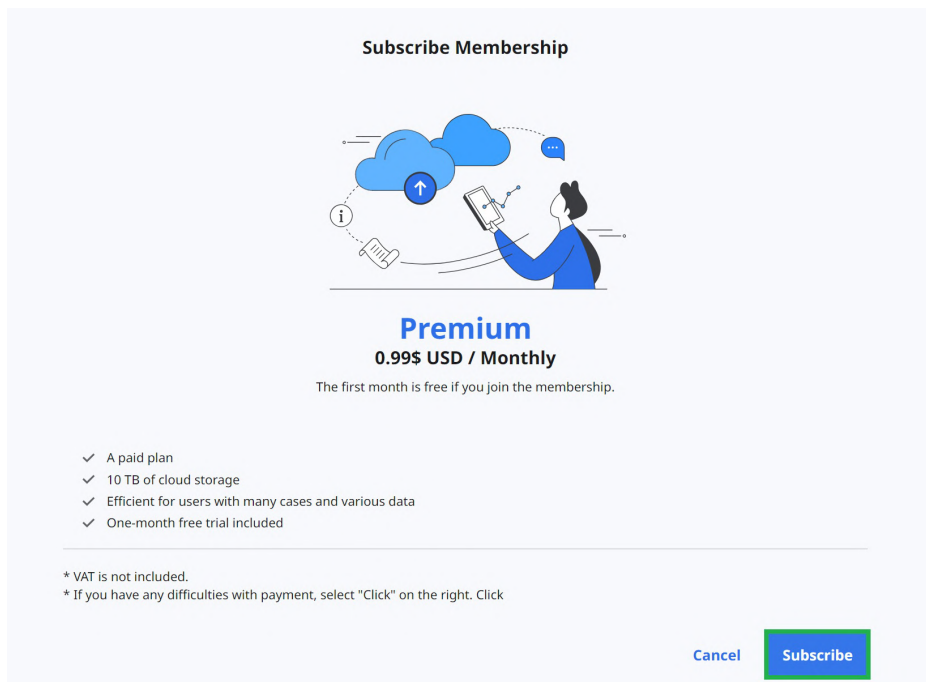

3. Проверьте цену и условия и введите информацию, необходимую для оплаты. Затем нажмите «Подписаться».

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic Medit Link Membership Billed daily	\$0.99
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE -- for first subscription 100% off for a day	-\$0.99
Total due today	\$0.00

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with link ➡

Or pay with card

Email

Card information

Cardholder name

Country or region

▼

☐ **Securely save my information for 1-click checkout**
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

4. Оплата может занять несколько секунд. По завершении вы увидите сообщение с подтверждением:

Subscribe Membership



Payment Successful.


[Invoice](#)

[Close](#)

Отказ от подписки

Вы можете отказаться от подписки в любое время. После отказа от подписки вы по-прежнему сможете использовать тарифный план Premium в течение оставшихся дней оплаченного месяца. Начиная со следующего дня оплаты, ваш тарифный план будет изменен на тарифный план Standard, а объем облачного хранилища будет ограничен 1 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование данных не будет производиться, и функции «Заказ» и «Поделиться» будут недоступны.

1. Нажмите «Отписаться».
2. Нажмите «Отменить подписку».

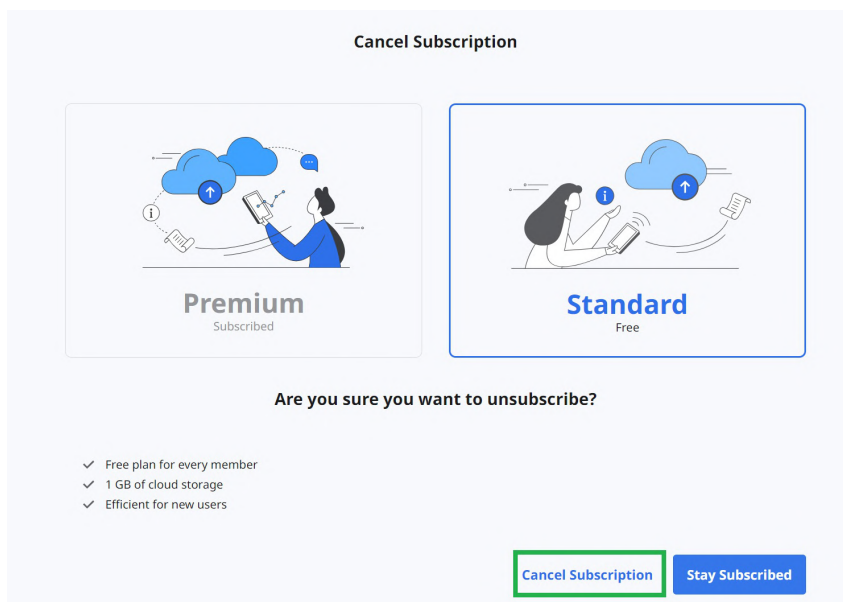

3. Чтобы подтвердить, что вы хотите отказаться от подписки, снова нажмите «Отменить подписку» в новом всплывающем окне.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Ваша подписка отменена.
5. Начиная со следующего дня оплаты, ваш тарифный план будет изменен на тарифный план Standard, а объем облачного хранилища будет ограничен 1 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование данных не будет производиться, и функции «Заказ» и «Поделиться» будут недоступны.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Информация для выставления счетов

Вы можете просмотреть историю платежей по подпискам, включая счета для каждого платежа. Также вы можете добавить или изменить способ оплаты, который будет применяться начиная со следующего запланированного платежа.

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Как добавить способ оплаты

1. Нажмите «Редактировать способ оплаты».

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Нажмите «Добавить способ оплаты».

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Введите необходимую информацию и нажмите «Добавить».

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. вновь добавленный способ оплаты будет установлен в качестве используемого по умолчанию и будет использован для следующего платежа.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Как изменить способ оплаты

1. В диалоговом окне выставления счетов нажмите на значок расширенного меню рядом с тем способом оплаты, который вы хотите изменить.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Нажмите «Использовать по умолчанию», чтобы установить выбранную карту в качестве способа оплаты по умолчанию.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Использование промокода

Зарегистрируйте промокод, предоставленный в рамках промоакции. Вы можете использовать тарифный план Premium вместе с промокодом.

Регистрация промокода

1. Введите промокод и нажмите «Зарегистрировать».

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30 Wonhoon-TestRedeem		Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

2. Прочтите уведомление и выберите во всплывающем диалоговом окне «Зарегистрировать» или «Применить».
- **Зарегистрировать:** регистрирует промокод. Вы можете активировать и использовать промокод позже после регистрации.
 - **Применить:** регистрирует и активирует промокод. Скидка по промокоду начинает действовать немедленно.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

Close Register Apply

Активация промокода

Вы можете зарегистрировать несколько промокодов, но вам необходимо активировать тот, который вы хотите использовать.

1. Нажмите кнопку «Активировать» рядом с кодом, который вы хотите использовать.
- Если код со статусом Activated отсутствует, тот код, который вы выберете, будет применен немедленно.
 - Если уже активированный код существует, вновь выбранный код переходит в статус Waiting. Когда истечет срок действия текущего активированного промокода, новый промокод, находящийся в статусе Waiting, будет автоматически активирован.

Примечание

Только один промокод можно активировать, и только один промокод может находиться в статусе Waiting.

My Info

Моя учетная запись

Здесь вы можете просмотреть и отредактировать введенную при регистрации информацию, а также проверить статус подписки.

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info". The main content area is titled "Account Information" and features a "2022 Trusted Lab Partner of Medit" badge. The account details include:

- Email Address:** seolah.jeon@medit.com (with a "Change Email Address" button)
- Password:** (with a "Change Password" button)
- Name:** seolah.jeon_dev_admin
- Language:** English (dropdown menu)
- Country/Region:** Korea, Republic of (dropdown menu)

A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification."

Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)

Вы можете просмотреть и отредактировать информацию о вашей клинике или лаборатории. Этот раздел доступен только для учетных записей администратора.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Мой сканер

Здесь вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах для данной учетной записи.

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah.jeon

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home Terms & Conditions Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Другое меню

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Связанные веб-сайты

Здесь вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Medit Academy, канал Medit Academy на YouTube и Справочный центр Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Скачать приложение Medit Link


Здесь вы можете скачать последнюю версию установщика программы из интернета. Это может быть полезно, если вы потеряли установщик, поставляемый с продуктом, или ваш установщик устарел.

Примечание

Если у вас есть подключение к интернету Medit Link обновляется автоматически.

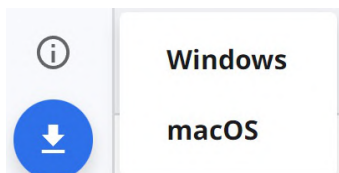

Обзор

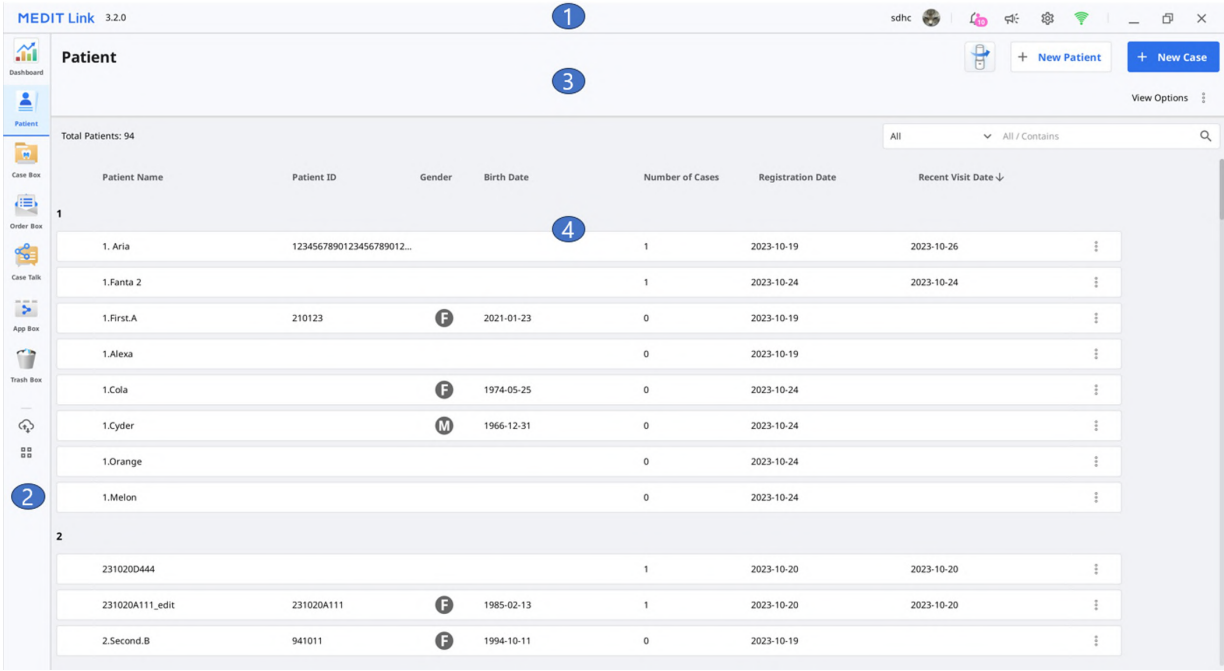

1	Строка заголовка	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Строка заголовка .
2	Меню	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Меню .
3	Инструменты и функции	Более подробную информацию смотрите в разделах Приложение Medit Link > Просмотрщик файлов и Приложение Medit Link > Параметры просмотра .
4	Список проектов	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Фильтрация и поиск .

В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.

Тип учётной записи		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Учетная запись клиники	Администратор	O	O	O	X	X	O	O	O
	Пользователь	O	O	O	X	X	O	O * Только функция восстановления	O
Учетная запись лаборатории	Администратор	X	X	X	O	O	O	O	O
	Участник	X	X	X	O	O	O	O * Только функция восстановления	O

Строка заголовка

Строка заголовка обеспечивает быстрый доступ к таким разделам, как информация учетной записи, уведомления, оповещения и обновления, настройки и статус сетевого соединения.



Моя информация

Раздел «Моя информация» содержит основную информацию о пользователе, такую как изображение профиля, название клиники или лаборатории, адрес электронной почты и имя пользователя.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Уведомления

В этом разделе вы можете увидеть уведомления, связанные с партнерством, заказами и рабочим процессом.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	Установите флажок, чтобы отображались только непрочитанные сообщения.
2	Щелкните любое уведомление, чтобы мгновенно перейти к соответствующему проекту или веб-странице.

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Настройки

Диалоговое окно настроек позволяет пользователям настраивать программу.

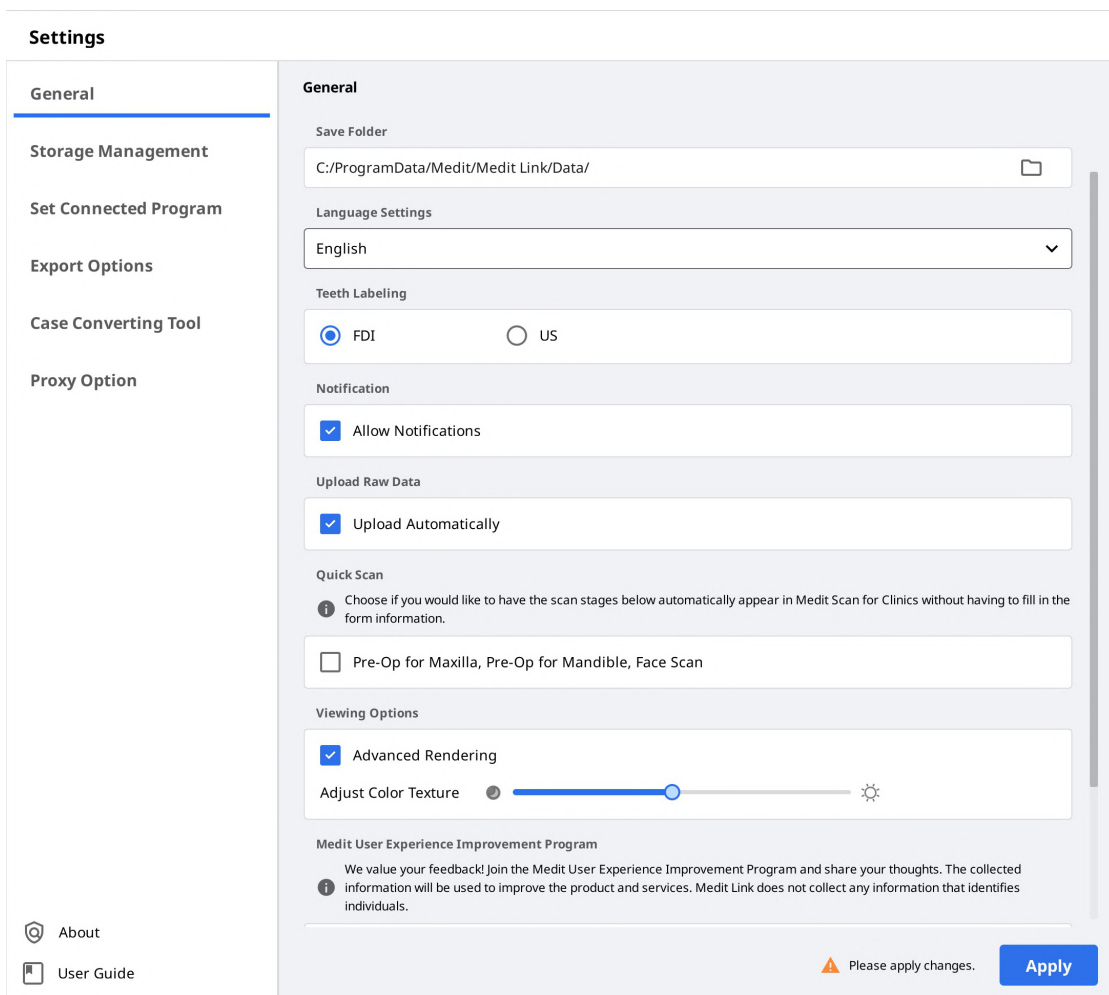

Более подробную информацию о параметрах настроек смотрите в разделе [Приложение Medit Link > Настройки](#).

Статус сетевого соединения

Medit Link позволяет беспрепятственно использовать все функции при подключении к сети.

Чтобы помочь вам проверить состояние сетевого подключения в режиме реального времени, в строке заголовка отображается значок состояния сети.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

При неудовлетворительном сетевом подключении вы можете столкнуться со следующими ограничениями:

- Некоторые функции, такие как заказ проекта, создание проекта, общий доступ через Case Talk и облачная синхронизация, будут ограничены.
- Общая производительность сервиса может быть снижена из-за влияния сетевой среды.

В этом случае вы можете перейти в офлайн-режим для выполнения базовых задач, а затем, после подключения к сети, использовать функции, которые требуют интернет-соединения.

Примечание

Символ сети указывает на скорость отклика между текущей областью и AWS (веб-сервисом Amazon). Он не отображает скорость вашей сети. Иногда он может отображать статус как неудовлетворительный, даже если скорость вашей сети достаточно высока.

Если для других процессов используется та же сеть, скорость сети может быть низкой, и общая производительность Medit Link также может быть снижена. В этом случае, пожалуйста, не используйте сеть совместно с другими процессами.

Например, функция «Загрузить необработанные данные» занимает огромную часть сетевого процесса. Если значок отображает статус, как неудовлетворительный, перейдите в Настройки > Загрузить необработанные данные и отключите функцию «Автоматическая загрузка».

Настройки

Общие

Содержит параметры для общей настройки системы.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Папка для сохранения	Задайте папку для хранения результатов данных, созданных в Medit Link и подключенных программах.	
Папка установки приложений	Укажите путь установки для приложений Medit Apps и партнерских приложений, доступных в App Box.	
Настройки языка	Выберите язык программы.	
Маркировка зубов	Выберите систему маркировки зубов между FDI и US.	
Уведомления	Если отмечена эта функция, вы будете получать уведомления об обновлениях программы.	
Загрузить необработанные данные	Если отмечена эта функция, необработанные данные автоматически загружаются в облако. Это помогает создавать резервные копии исходных данных и выполнять бесшовное сканирование при использовании Medit Link с той же учетной записью на другом ПК. Резервное копирование исходных данных в облаке применяется только к данным, полученным в Medit Scan for Clinics.	
Быстрое сканирование	Выберите, хотите ли вы, чтобы указанные ниже этапы сканирования автоматически отображались в Medit Scan for Clinics без необходимости заполнения информации формы. • Предоперационная верхняя челюсть • Предоперационная нижняя челюсть • Сканирование лица	
Параметры просмотра	Расширенный рендеринг	Если отмечена эта функция, 3D-модель отображается более ярко и реалистично.
	Настроить цвет текстуры	Регулирует яркость 3D-модели. * Результирующие цвета могут незначительно отличаться от цвета в Medit Link, когда вы открываете те же данные с помощью другого программного обеспечения.
Программа улучшения пользовательского опыта Medit	Присоединяйтесь к программе улучшения пользовательского опыта Medit. • Мы используем собранную информацию для улучшения наших продуктов и услуг. • Мы не собираем какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать отдельных лиц.	
Страница по умолчанию после входа в систему	Выберите меню по умолчанию, которое будет отображаться при запуске программы. • Для учетной записи клиники можно выбрать либо Patient, либо Case Box • Для учетной записи лаборатории можно выбрать либо In Box, либо Work Box	

Управление хранилищем

Просмотр и управление локальным и облачным хранилищами.

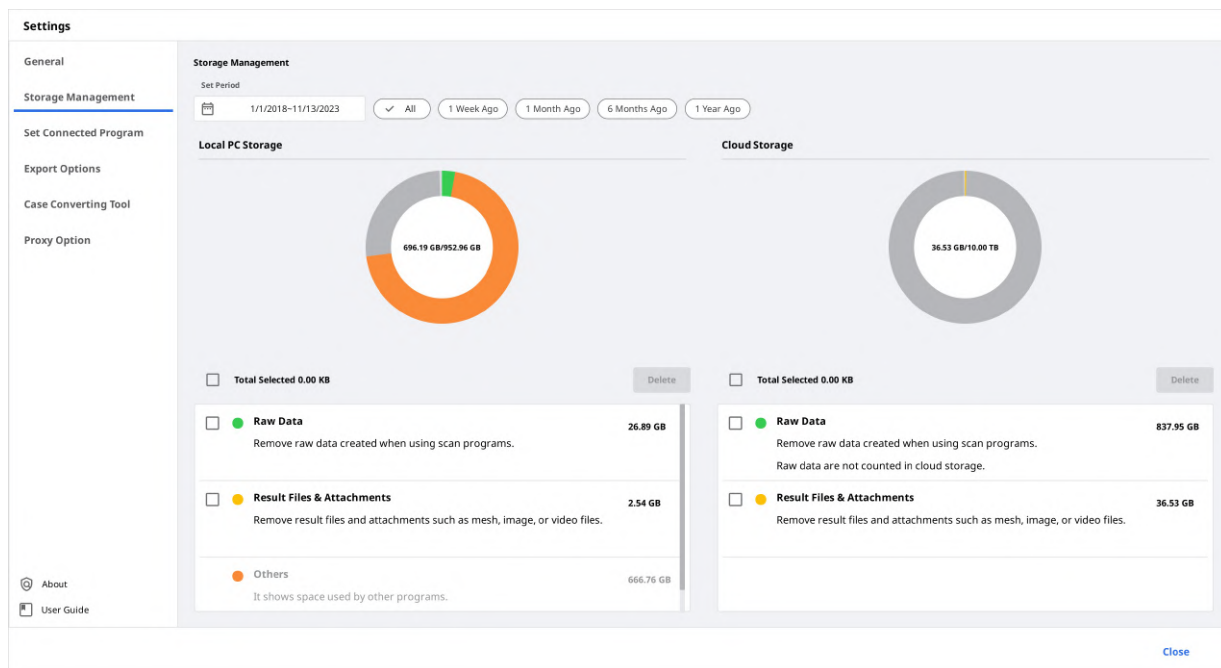

Установка периода

Установите конкретный период для удаления данных, созданных в течение указанного ниже периода времени.

- Все: показывает все файлы.
- 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя.
- 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц.
- 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев.
- 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.

Локальное хранилище

Управление дисковым пространством ПК.

Необработанные данные	Удаляет выбранные необработанные данные с ПК. Если необработанные данные уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Результаты и вложения	Удаляет с ПК файлы результатов и вложений, такие как сетка, изображения и видео. Если эти файлы уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Прочее	Показывает файлы, используемые для работы системы и других программ. Отображает объем памяти вашего ПК. Вы не можете удалить эти файлы из Medit Link.
Удалить	Удаляет выбранные файлы с ПК.

Облачное хранилище

Управление облачным хранилищем.

Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Но, при необходимости, вы можете здесь управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента и т. п.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложений занимают место в облачном хранилище. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Купить место в хранилище	Если вы пользуетесь тарифным планом Standard, подпишитесь на тарифный план Premium, чтобы увеличить объем облачного хранилища.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Установить подключенную программу

Управляет программами, поддерживающими интеграцию в Medit Link.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ Medit Scan for Clinics
C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_jScan.exe

Apply

Close

Вы можете установить следующие программы:

	Учетная запись клиники	Учетная запись лаборатории
Программа сканирования	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Примечание

Следующие сервисы недоступны для Medit Link в macOS:

- Medit Scan for Labs

Параметры экспорта

Установите, как экспортировать файлы из Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Тип CAD	Выберите программу CAD, которую хотите использовать для проектирования. Программа скорректирует результаты на основе вашего выбора, что позволит вам продолжить проектирование без какого-либо дополнительного выравнивания осей.
Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения результатов.
Формат файла сетки	Укажите формат окончательного файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать и объединить	Сжать файлы: сжимает все результаты в один файл. Объединить файлы при экспорте: объединяет все результаты для верхней или нижней челюсти в один файл. При использовании некоторых программ, которые не могут импортировать несколько файлов и работать с ними, вы можете объединить их в один для работы в этих программах.
Варианты в случае, когда такая же папка или файл уже существуют.	Выберите действие по умолчанию для случаев, когда такое же имя папки или файла существует в целевом местоположении. • Всегда спрашивать при экспорте. • Экспортировать новый файл и перезаписать существующие файлы. Сохраненный в данный момент файл будет потерян. • Создайте папку и экспортируйте файлы.
Правило для имени папки	Определите правила для создания имени папки при экспорте файлов. Установленные правила будут применены к именованию папки, и экспортированный файл будет сохранен в созданной папке. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа
Правило для имени файла	Определите правила для имени экспортируемого файла. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа

Инструмент для преобразования проекта


Вы можете перемещать проекты между разными учетными записями, экспортируя существующие проекты учетной записи или импортируя проекты, экспортированные из других учетных записей.

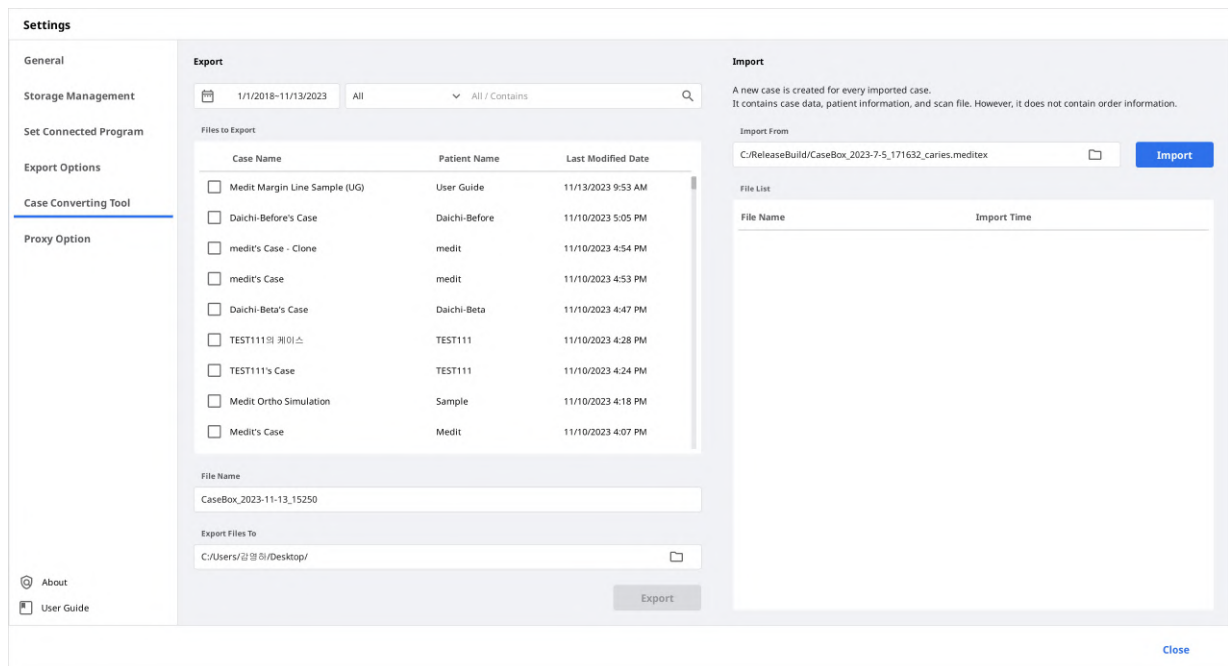


Экспорт проекта

Экспортируйте проекты текущей учетной записи на локальный компьютер.

1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

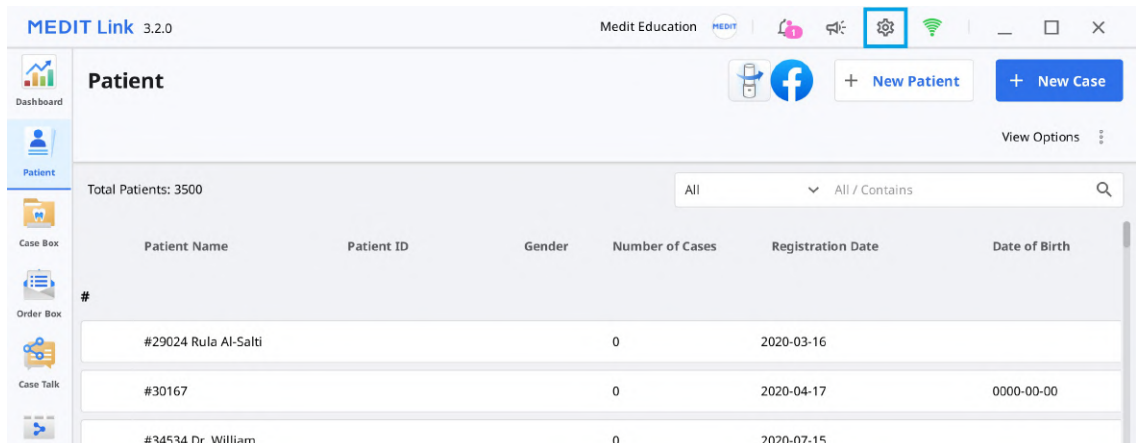

2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

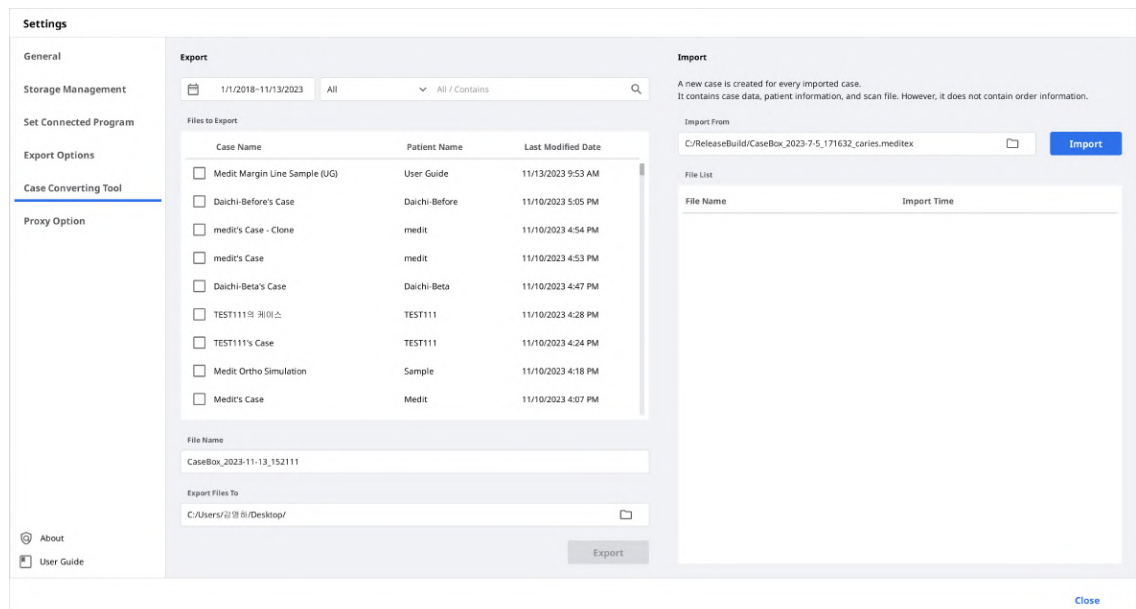

3. В разделе «Экспорт» задайте период или выполните поиск проектов для экспорта, если это необходимо.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스

☐ TEST111's Case

☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. В разделе «Файлы для экспорта» выберите из списка проекты, которые хотите экспортировать.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Задайте имя файла, отредактировав название проекта в поле «Имя файла».
6. Установите папку назначения для экспорта выбранных проектов.
7. Нажмите «Экспортировать».
8. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которую экспортируется файл.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Экспортированные проекты сохраняются в формате файла .meditex.

Импорт проекта

1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education


Patient

Total Patients: 3500


All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024	Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167				0	2020-04-17	0000-00-00
#34534	Dr. William			0	2020-07-15	


2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

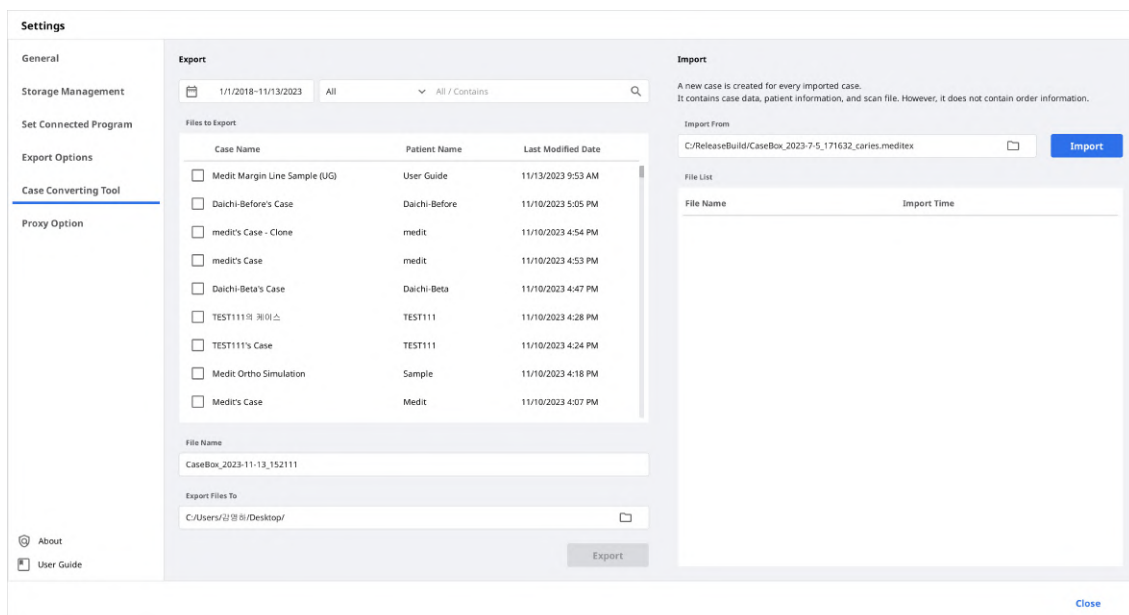

3. В разделе «Импорт» нажмите на значок папки, чтобы найти на компьютере файл .meditex, который вы хотите импортировать.

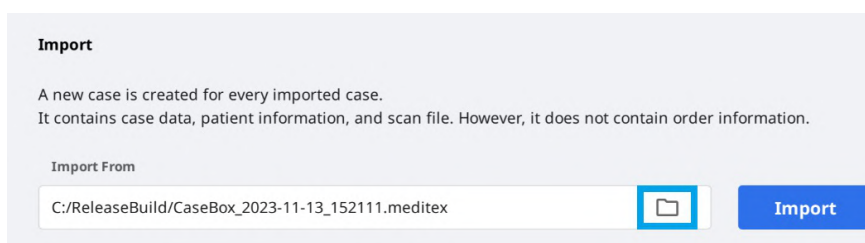

4. Нажмите кнопку «Импортировать» и отметьте файлы для импорта в списке ниже.

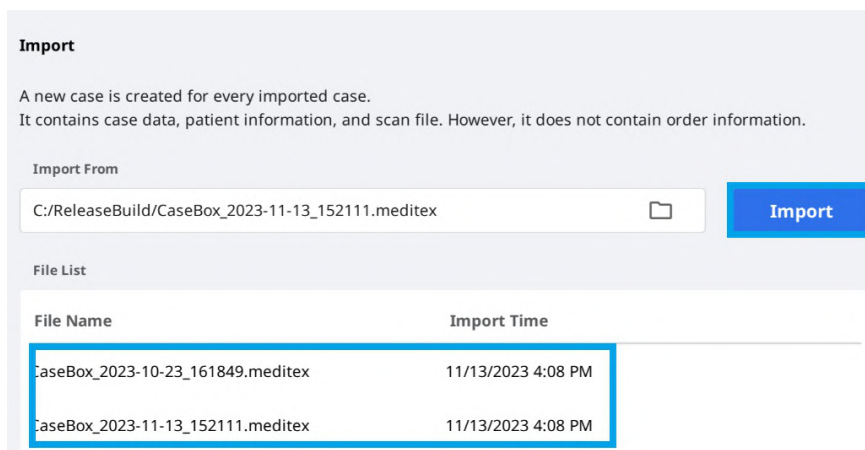

5. Импортированный проект также появится в вашем Case Box (учетная запись клиники) или Work Box (учетная запись лаборатории).

Параметры прокси

В некоторых ограниченных сетевых средах можно изменить сетевые настройки.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

О программе

Показывает подробную информацию о Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Руководство пользователя


Предоставляет руководство пользователя для Medit Link.

Для открытия руководства пользователя требуется подключение к интернету.

Меню

Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

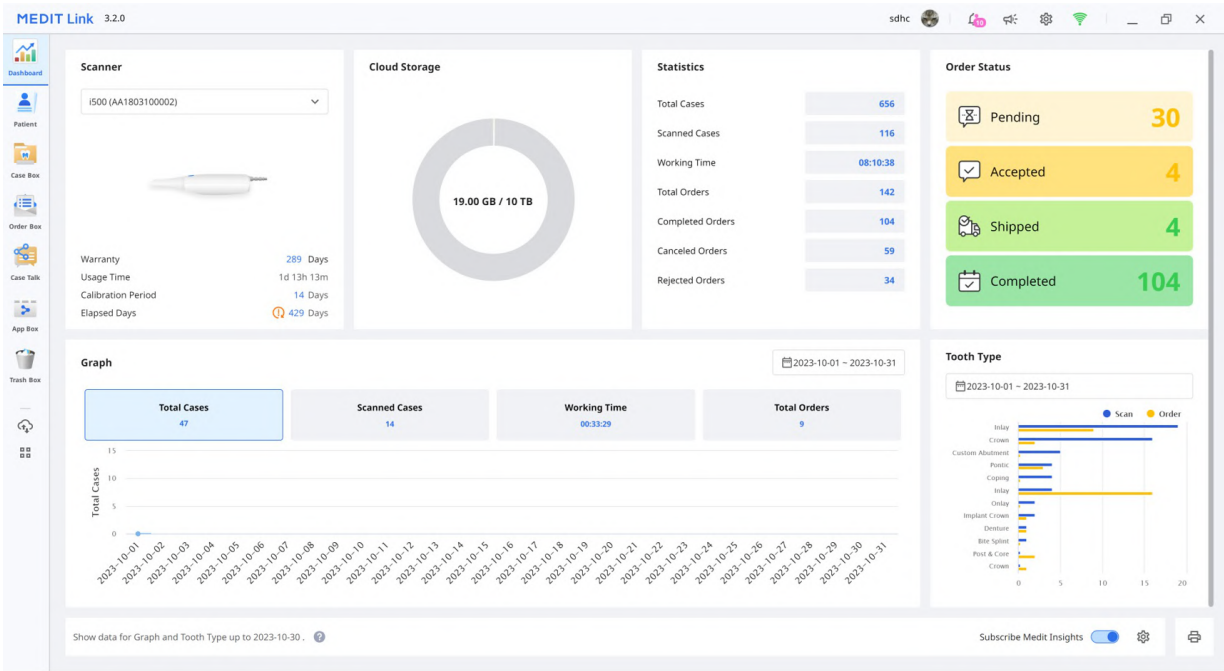

Примечание

Более подробную информацию об использовании Dashboard и Medit Insights смотрите в разделе [Веб-сервис Medit Link > Dashboard](#).

Patient

В меню Patient вы можете добавлять, редактировать, удалять или объединять данные пациентов.

MEDIT Link3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

<

Добавление нового пациента

1. Нажмите «Новый пациент».

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save


2. Заполните необходимую информацию в диалоговом окне «Новый пациент», затем нажмите «Сохранить».

Удаление пациента

Примечание

Вы можете удалить пациента только в том случае, если по нему нет проектов.

1. Выберите пациента для удаления из списка.

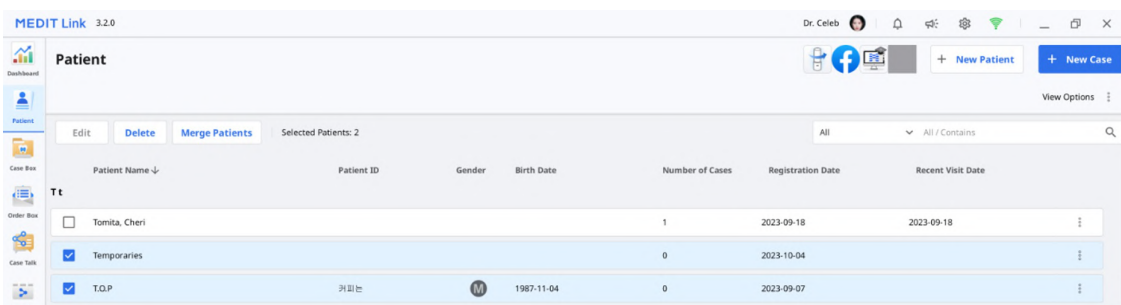


Patient						
Selected Patients: 2						
Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P.	카미는		1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Нажмите «Удалить».

Объединение пациентов

Вы можете объединить все проекты нескольких пациентов, объединив их под именем одного пациента.

1. Выберите пациентов, которых вы хотите объединить, из списка.

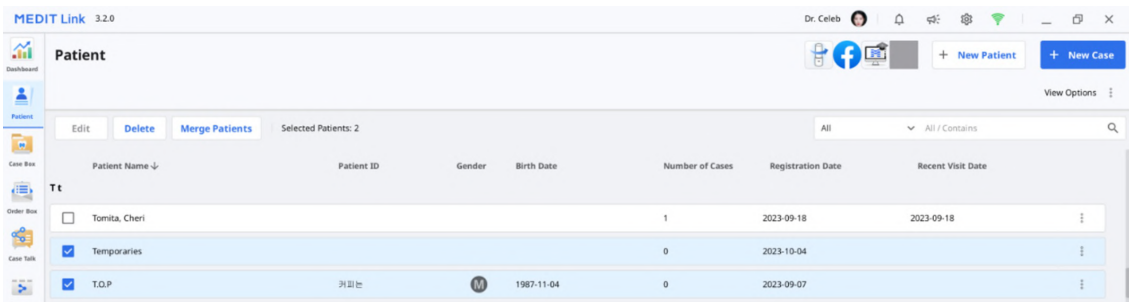

2. Нажмите «Объединить пациентов».
3. Выберите целевого пациента, под именем которого вы хотите объединить все проекты.
4. Все проекты объединяются под именем целевого пациента, и информация о целевом пациенте сохраняется.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#) [Apply](#)

5. Нажмите «Применить», чтобы завершить объединение.

Case Box/Work Box

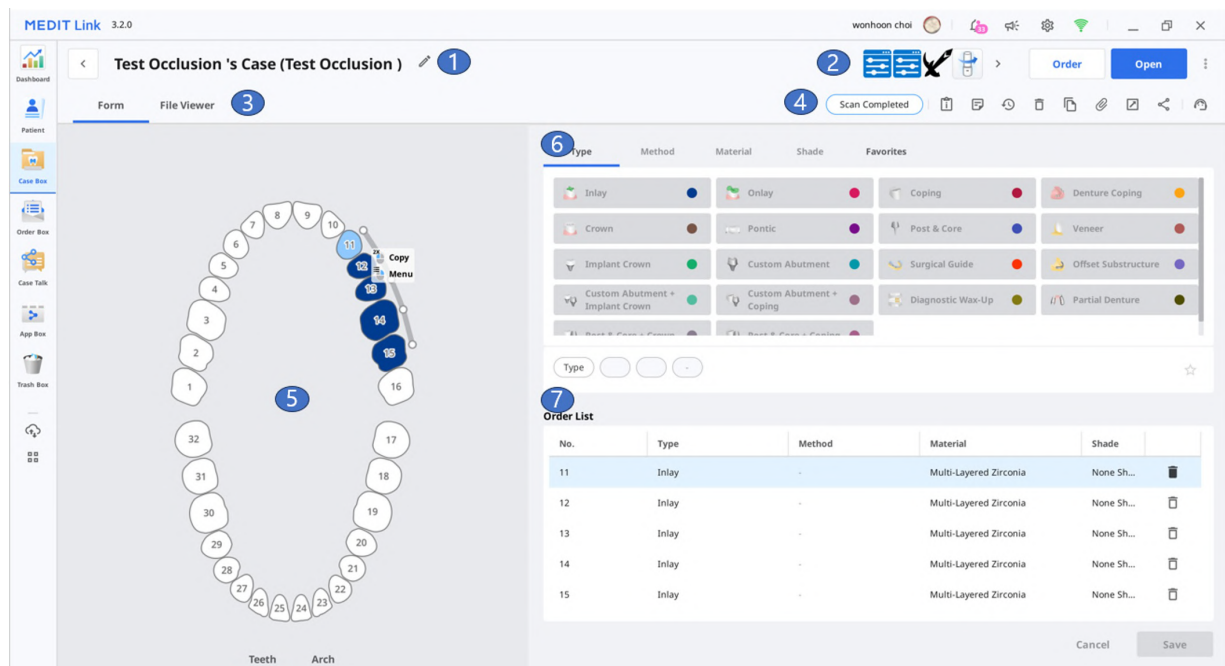

1	Название проекта и имя пациента.
2	Отображение основных доступных функций: кнопки «Сканировать» или «Открыть», кнопка «Заказ», значки приложений.
3	Доступные вкладки: «Форма» и «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами.
5	Пользовательский интерфейс регистрации формы для выбранной программы сканирования.
6	Выбор информации о типе/методе/материале/оттенке для выбранного номера зуба.
7	Информация о типе/методе/материале/оттенке, примененных к выбранным зубам.

Вкладки в Case Box/Work Box


Форма	Просмотрщик файлов
Вкладка «Форма» предоставляет пользовательский интерфейс для ввода основной информации для сканирования, такой как тип, метод, материал для номеров зубов, и параметров сканирования. Введенная вами информация передается в подключенную программу сканирования и используется в качестве информации о заказе при размещении заказа у вашего партнера.	Просмотр файлов результатов, созданных программами сканирования и CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Функции в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие функции:

	Статус проекта	Показывает статус проекта.								
	Перейти в Order Box/In Box	Предоставляет ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.								
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.								
	История проекта	Предоставляет подробную информацию об истории проекта. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Удалить	Удаляет проект. Нельзя удалять заказанные проекты или проекты, созданные в офлайн-режиме.								
	Клонировать	Создает дубликат текущего проекта в Case Box. Все данные будут скопированы в клонированный проект. Эта функция помогает реплицировать информацию о лечении для того же пациента или сделать дополнительный заказ с той же информацией или файлами.								
	Прикрепить	Прикрепляет файлы различных форматов.								
	Экспортировать	Экспортирует файлы результатов сканирования или CAD на локальный ПК. При экспорте файлов можно выбрать предпочтительный формат файла. Экспортированные файлы могут быть использованы в CAD- и CAM-программах для дальнейшей работы.								
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. Пользователи с общей ссылкой могут получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ. Свободно делитесь ссылкой со всеми или только с определенными людьми. Для защиты личной информации можно установить ПИН-код или срок действия ссылки.								
	Отправить заявку в поддержку	Переводит на страницу Справочного центра Medit для отправки запроса в службу поддержки.								

Order Box/In Box

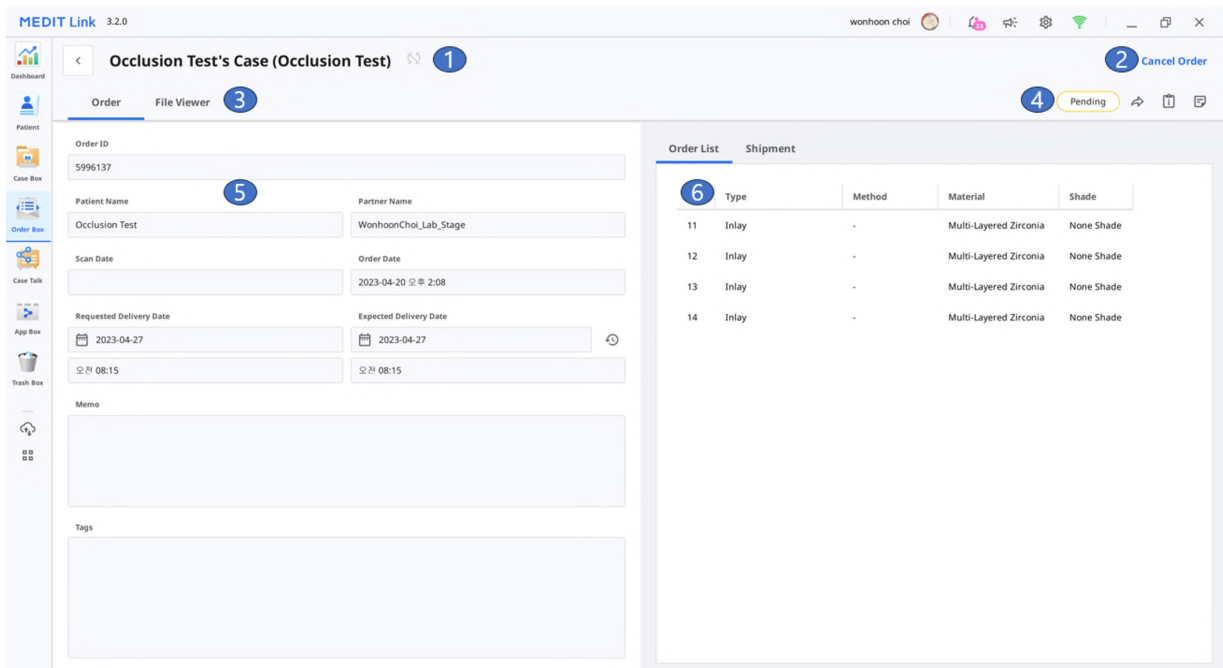

1	Название проекта и имя пациента.
2	Функции для управления заказами (прием/отмена; доставка/получение).
3	Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п.
5	Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги.
6	Информация о заказанном продукте и статусе доставки.

Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация, относящаяся к заказу, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

Примечание

Для использования Case Talk требуется интернет-соединение.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2.***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.

App Box

App Box содержит различные программы, которые дополняют ваш основной рабочий процесс сканирования и повышают производительность. Вы можете скачать и установить предлагаемые приложения для создания стоматологических аппаратов, анализа данных сканирования, помощи во время консультации или оптимизации рабочего процесса.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now >](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now >](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update](#)
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install](#)
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install](#)
- iie systems connector**: PRM specialized for orthodontics. [Install](#)
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install](#)
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link. [Install](#)
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS. [Install](#)

Все


На вкладке «Все» отображается список всех предоставленных приложений, включая оригинальные приложения, разработанные компанией Medit (Medit Apps), и партнерские приложения, которые представляют собой приложения для интеграции с партнерами Medit из различных секторов цифровой стоматологии, таких как 3D-печать, программное обеспечение CAD/CAM и т. д.

Medit Apps

На вкладке Medit Apps отображаются только оригинальные приложения, разработанные компанией Medit.

Скачано

На вкладке «Скачано» отображается список установленных в данный момент на компьютере приложений, а также приложений, которые ранее скачивались под учетной записью пользователя.

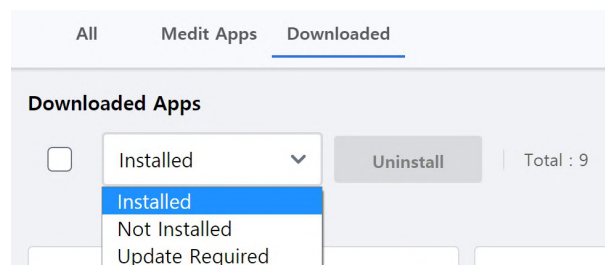

- **Установлено:** при выборе этого параметра отображаются только те приложения, которые установлены на компьютере, на котором пользователь в данный момент вошел в систему.
- **Не установлено:** выбор этого параметра позволяет просмотреть приложения, установленные на других компьютерах, и быстро их установить.
- **Требуется обновление:** при выборе этого параметра отображаются только те приложения, которые установлены на текущем компьютере и требуют обновления.

Trash Box

Trash Box временно хранит удаленные проекты. Любой проект в Trash Box может быть либо восстановлен, либо безвозвратно удален.

⚠ Предостережение

Данные, удаленные из Trash Box, будут безвозвратно удалены с вашего компьютера и сервера и не могут быть восстановлены.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Диспетчер синхронизации проектов

Диспетчер синхронизации проектов помогает загружать и скачивать проекты в Medit Link. Вы можете загрузить несколько проектов в облако или скачать их на свой локальный компьютер.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

Total Count: 240

Cancel All
Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case111111111111111111111111121312312313131233311111111111111444444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Загрузить

Общее количество проектов/ выбранные проекты	Проверить все/выбранные проекты, которые необходимо загрузить.
Загрузить все	Загрузить все проекты в облако.
Отменить все	Отменить все запросы на загрузку.
	Загрузить проект в облако.
	Отменить загрузку проекта.
	Повторить попытку загрузки проекта.

Скачать


Общее количество проектов/ выбранные проекты	Отметить все/выбранные проекты, которые необходимо скачать.
Скачать все	Скачать все проекты на компьютер.
Отменить все	Отменить все запросы на скачивание.
	Скачать проект на компьютер.
	Отменить скачивание проекта.
	Повторить попытку скачивания проекта.

Связанные веб-сайты

Вы можете перейти непосредственно к меню, доступным только в веб-сервисе Medit Link, таким как My Info, Partners и Membership. Подробное описание меню веб-сервиса Medit Link вы можете найти в Medit Link > веб-сервис Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) и [My Info](#).

В интернет-магазине Medit, Medit Shop, вы можете приобрести расширенную гарантию на сканеры и другие товары Medit, такие как рюкзаки для сканеров.

Также вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Справочный центр Medit, канал Medit Academy на YouTube и образовательная онлайн-платформа Medit Academy.

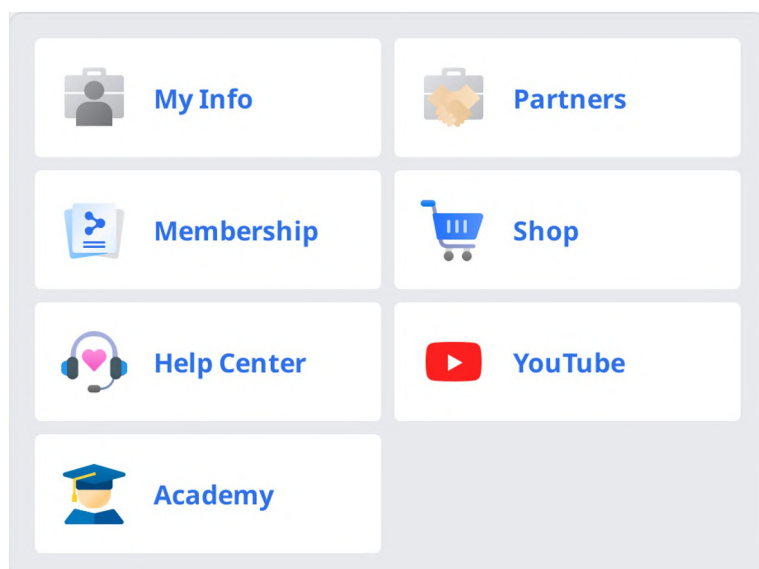

Просмотрщик файлов

Просмотрщик файлов группирует и отображает различные данные, включая данные, полученные из программ, связанных с Medit Link, и данные, прикрепленные пользователями.


Он обеспечивает основные функции управления, такие как просмотр/скрытие данных, настройка прозрачности и удаление данных.

Поддерживается предварительный просмотр файлов в следующих форматах:

- 3D-данные: STL, OBJ, PLY
- 2D-изображения: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Видеофайлы: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево данных

В дереве данных вы можете группировать и отображать все данные проекта. Кроме того здесь вы можете просматривать/скрывать данные, настраивать прозрачность и удалять данные из дерева данных.

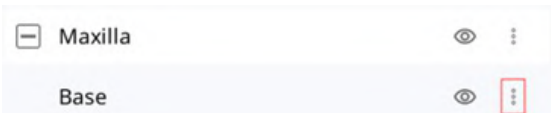	Показать/ скрыть	Позволяет показывать или скрывать данные.
	Непрозрачность	Ползунок появляется, когда в дереве данных вы нажимаете на какие-либо данные. Перемещая ползунок, вы можете настроить прозрачность отображаемых данных. 
	Дополнительно	Показывает доступные дополнительные функции.  • Показывать только это: скрывает все данные, кроме необходимых. • Скрыть: скрывает данные. • Дублировать: копирует данные и добавляет их в группу вложений. • Экспортировать: экспортирует выбранные файлы. • Переименовать: изменяет имя данных. • Удалить: удаляет данные.

Примечание

Вы можете переименовать данные в онлайн-режиме.

Инструменты управления моделью

Управление 3D-моделью

	Панорамировать	Перемещает модель.
	Повернуть	Поворачивает модель.
	Увеличить/уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
	Режим отображения модели	Текстура включена
		Текстура выключена
	Настройки сетки (mm)	Включить сетку
		Включить наложение
		Выключить сетку
		Отображает данные в реальных цветах текстуры.
		Отображает данные одним цветом.
		Показывает сетку на заднем плане.
		Накладывает сетку поверх модели.
		Скрывает сетку.

Управление 2D-изображением


	Следующее/предыдущее изображение	Позволяет перемещаться между изображениями.
	Редактировать	Редактирует изображение.
 	Закрепить/открепить окно	Позволяет отсоединить окно с изображением и переместить его в нужное положение. Вы можете изменить размер окна. После перемещения окна в исходное положение оно возвращается к размеру по умолчанию.

Функциональные инструменты

Захват изображений и заметки


Делайте захваченные изображения экрана в виде 2D-изображений, рисуйте на них или добавляйте примечания.


Вы можете сохранять их как файл вместе с вашими примечаниями и отправлять в качестве референсных данных.

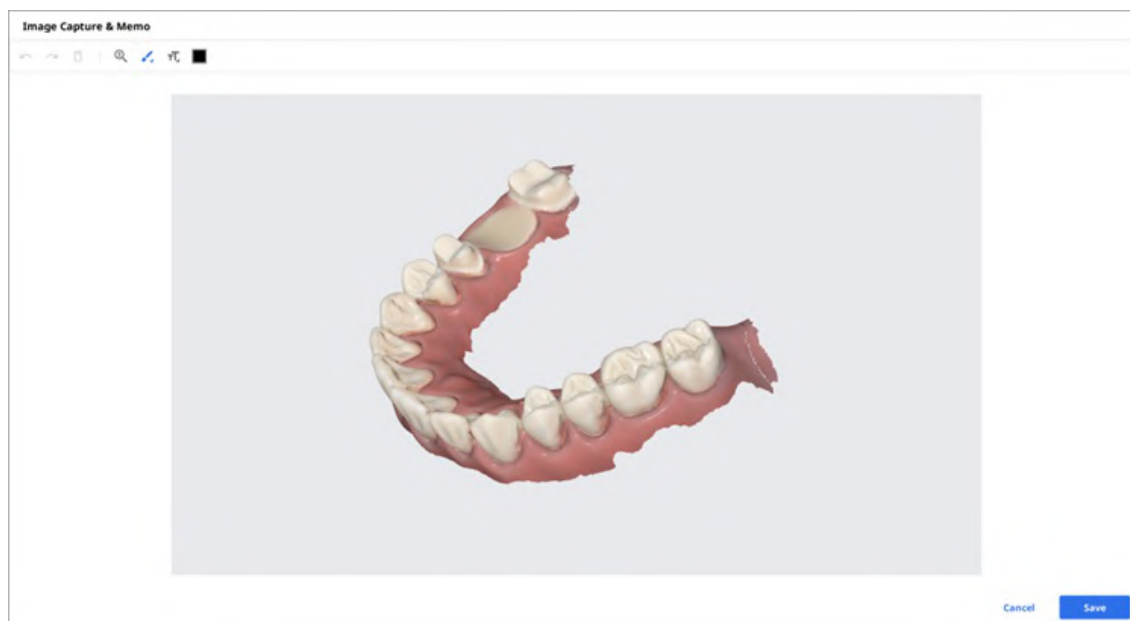

Ортодонтический захват


Делайте изображения в направлении просмотра, а также сверху/снизу/слева/справа от направления текущего просмотра.

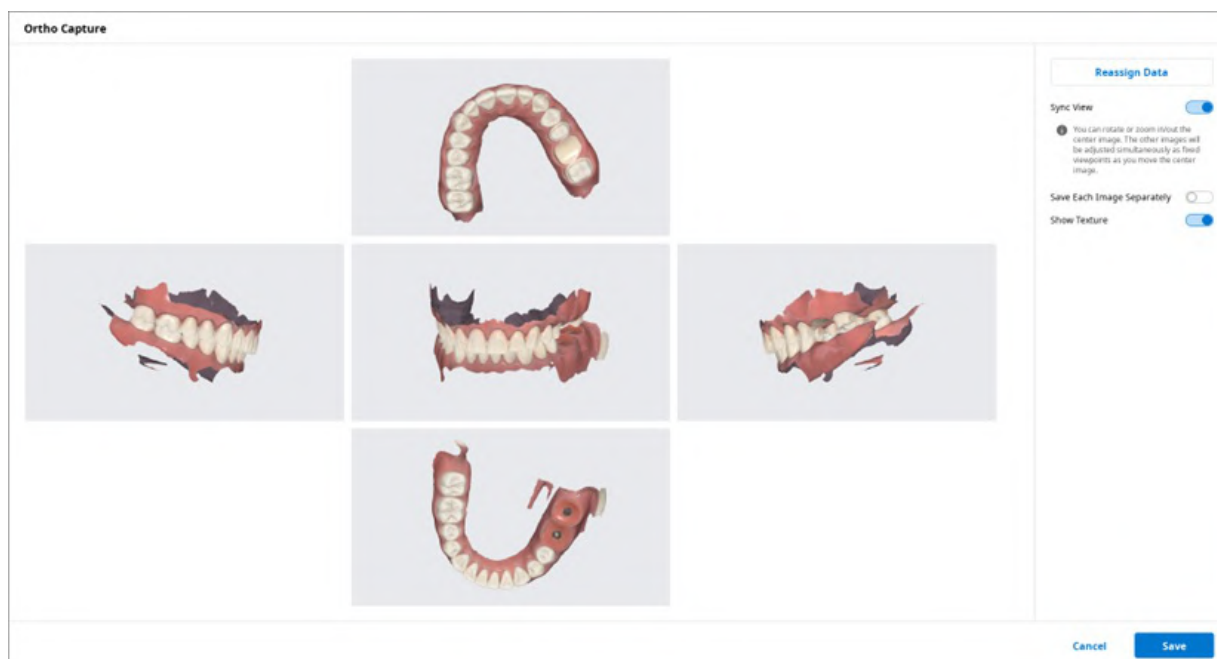

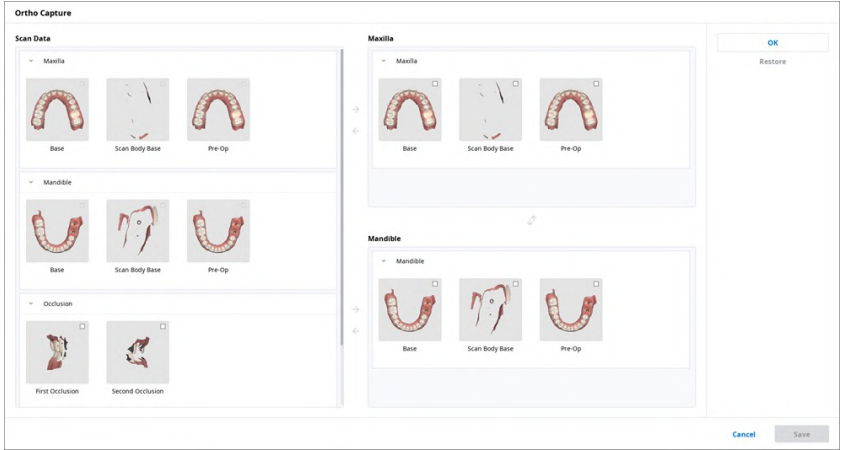Синхронизация просмотра	Если эта функция включена, вы можете поворачивать или увеличивать/уменьшать центральное изображение. При его перемещении одновременно будут меняться и остальные изображения фиксированных точек обзора. Когда эта функция выключена, вы можете панорамировать, поворачивать или увеличивать/уменьшать все изображения по отдельности.
Сохранить каждое изображение по отдельности	Сохраняет каждое изображение в высоком разрешении.
Показать текстуру	Включает/выключает текстуру модели.
Повторно назначить данные	С помощью функции «Повторно назначить данные» вы можете изменять данные верхней/нижней челюсти. Измененные данные можно использовать для создания и применения изображений результатов ортодонтического захвата.  • Данные сканирования: отображаются данные сканирования для проекта. • Верхняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для верхней челюсти. • Нижняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для нижней челюсти.


Заполнить дырки

Заполнение дырок в данных 3D-сетки.

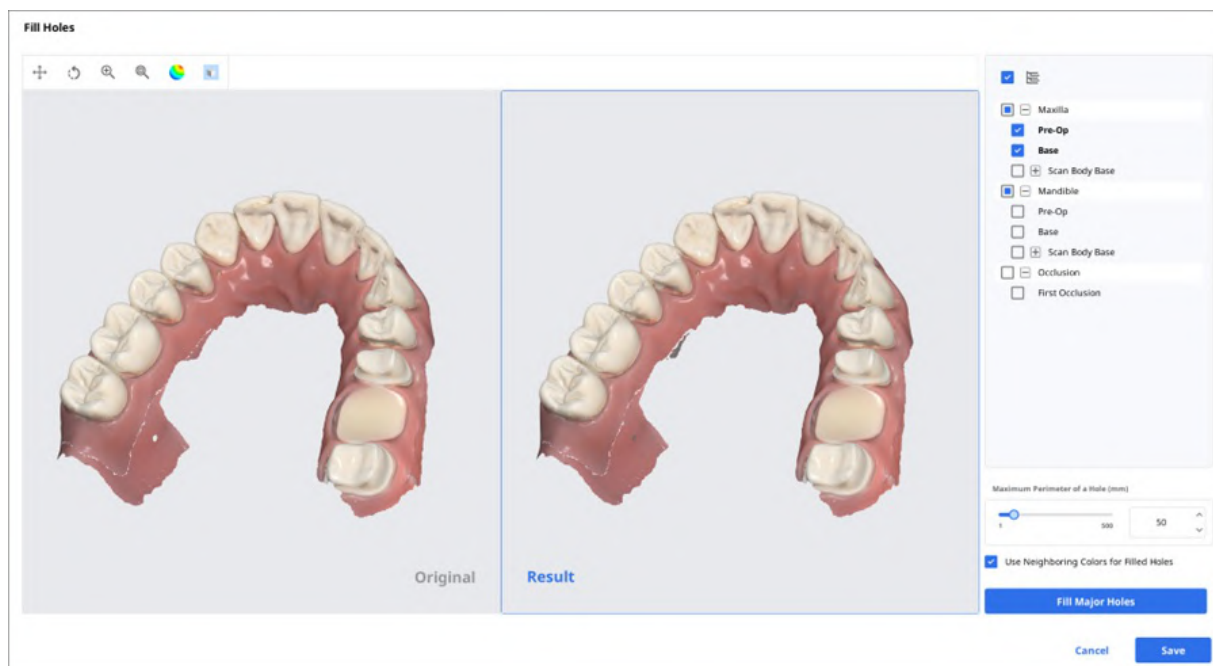

Обрезка


Функция обрезки предоставляет различные инструменты для редактирования данных.

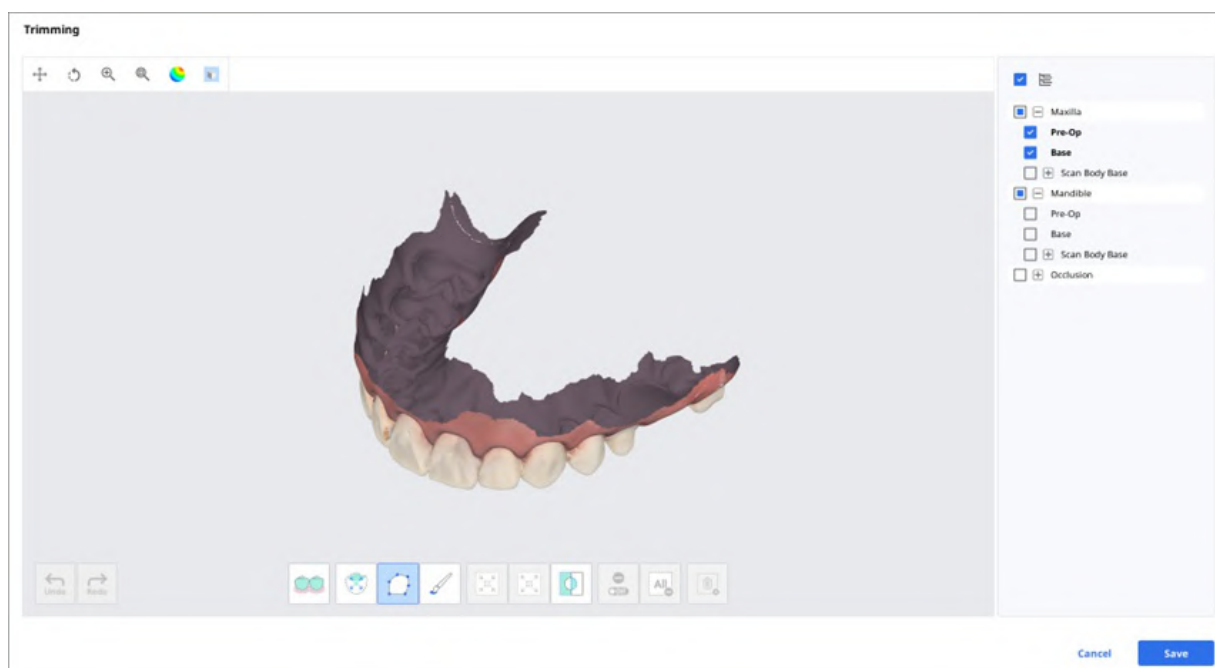

Выбранные данные 3D-сетки можно редактировать с помощью различных инструментов, расположенных в нижней части окна.

Выбор		Умный выбор области зубов	Автоматически выбирает все зубы дуги, исключая десну. Примечание Эта функция доступна только для данных сканирования, полученных с помощью Medit Scan for Clinics с включенной опцией «Использовать GPU».
		Умный выбор области одного зуба	Автоматически выбирает область отдельного зуба одним щелчком мыши. Вы можете щелкнуть по зубу или перетащить его.
		Выбор полилинией	Выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране.
		Выбор кистью	Выбирает все объекты на начерченном от руки пути на экране. Будет выбрана только лицевая сторона. Кисть поставляется в трех разных размерах.
Настройка выбранной области		Уменьшить выбранную область	Уменьшает выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Расширить выбранную область	Расширяет выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Инвертировать выбранную область	Инвертирует выбранную область.
Отмена выбора		Выбор/отмена выбора	При включении отменяет выбор области с помощью различных инструментов.
		Очистить все выбранное	Очищает все выбранные области.
		Удалить выбранную область	Удаляет данные из выбранной области.


1. С помощью инструментов выбора области выберите область, которую хотите обрезать.

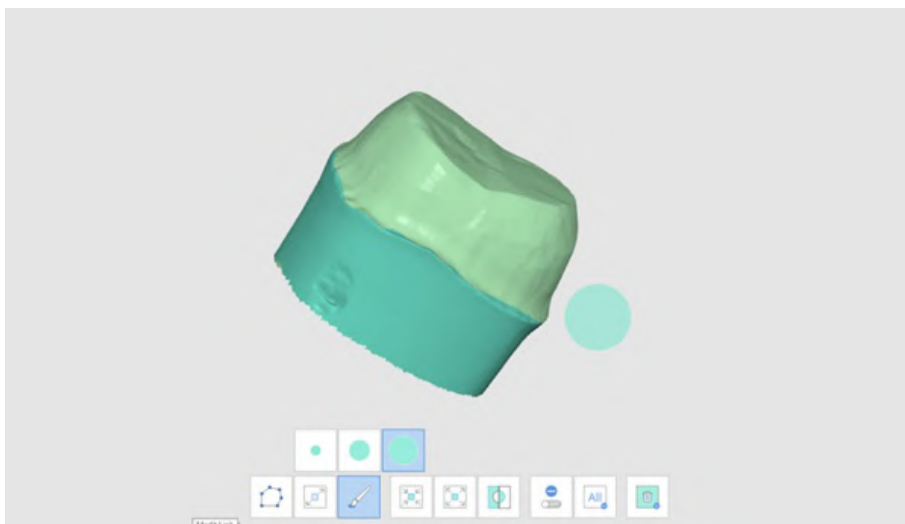


Примечание

Инструмент «Обрезка полилинией» выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране, в то время как инструмент «Обрезка кистью» выбирает данные только лицевой стороны.


2. Вы можете инвертировать, уменьшать или расширять выбранную область с помощью трех следующих инструментов:
 - Инвертировать выбранную область

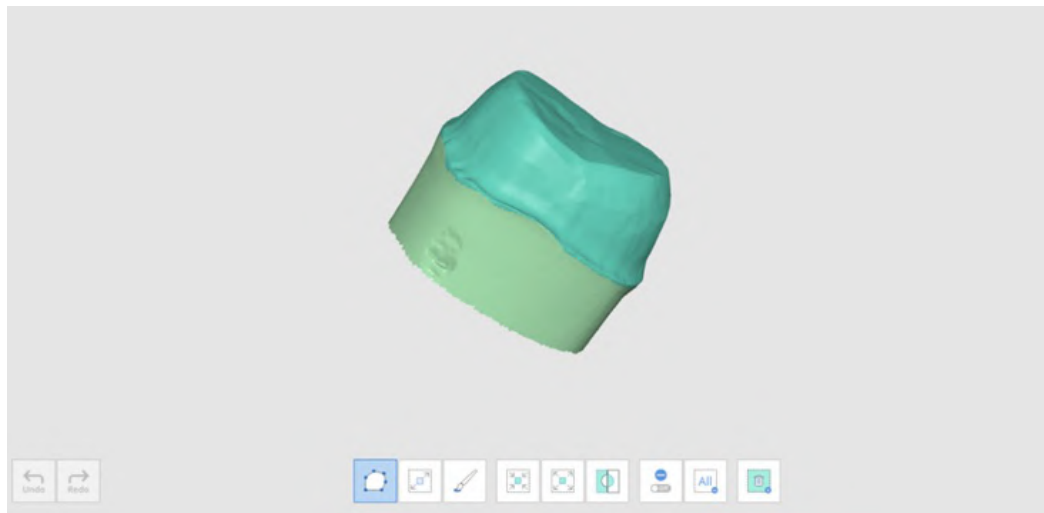

- Уменьшить выбранную область

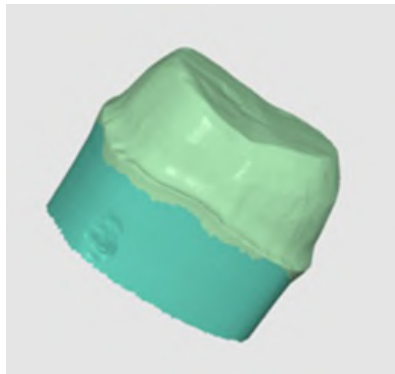


- Расширить выбранную область

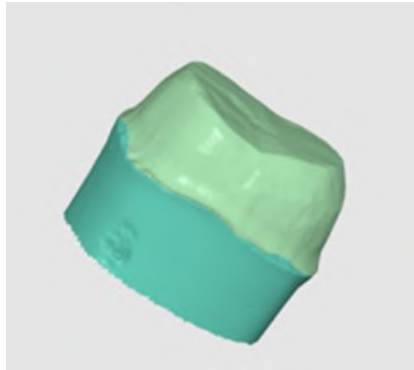



3. Отменить выделение выбранных областей можно с помощью инструмента «Удалить выбранную область».

Оптимизация сопоставления окклюзии

Оптимизируйте сопоставление окклюзии. Вы можете выбрать целевые данные и настроить сопоставление окклюзии.

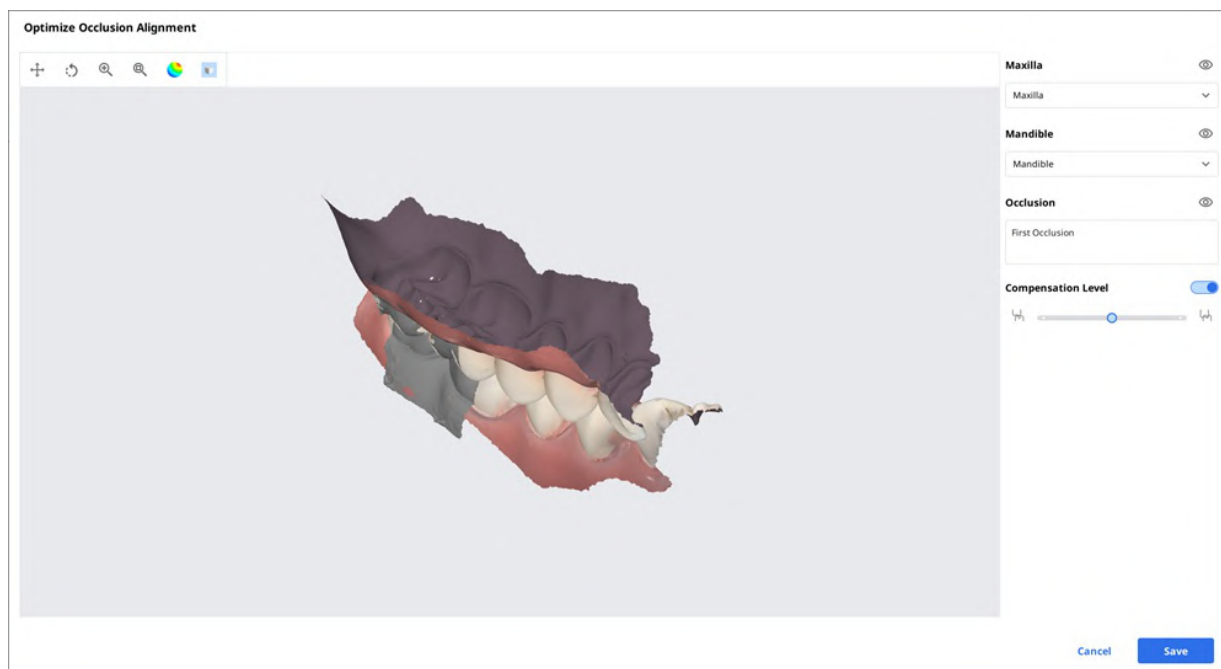


Уровень компенсации

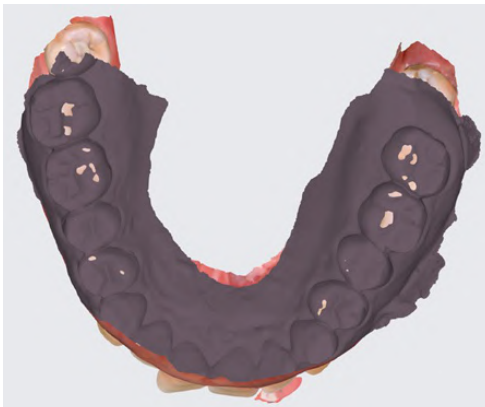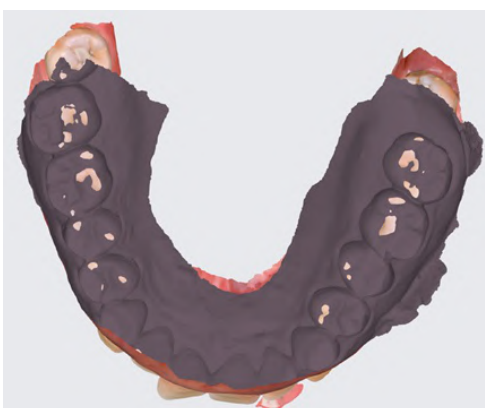Низкий	Compensation Level ☒ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	
Средний	Compensation Level ☐ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ☒	
Высокий	Compensation Level ☐ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ☒	
Выключен	Compensation Level ☐ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ☐	

Движение нижней челюсти

Вы можете воспроизвести движения нижней челюсти, записанные в Medit Scan for Clinics, чтобы увидеть динамические окклюзионные контакты между верхним и нижним зубными рядами.

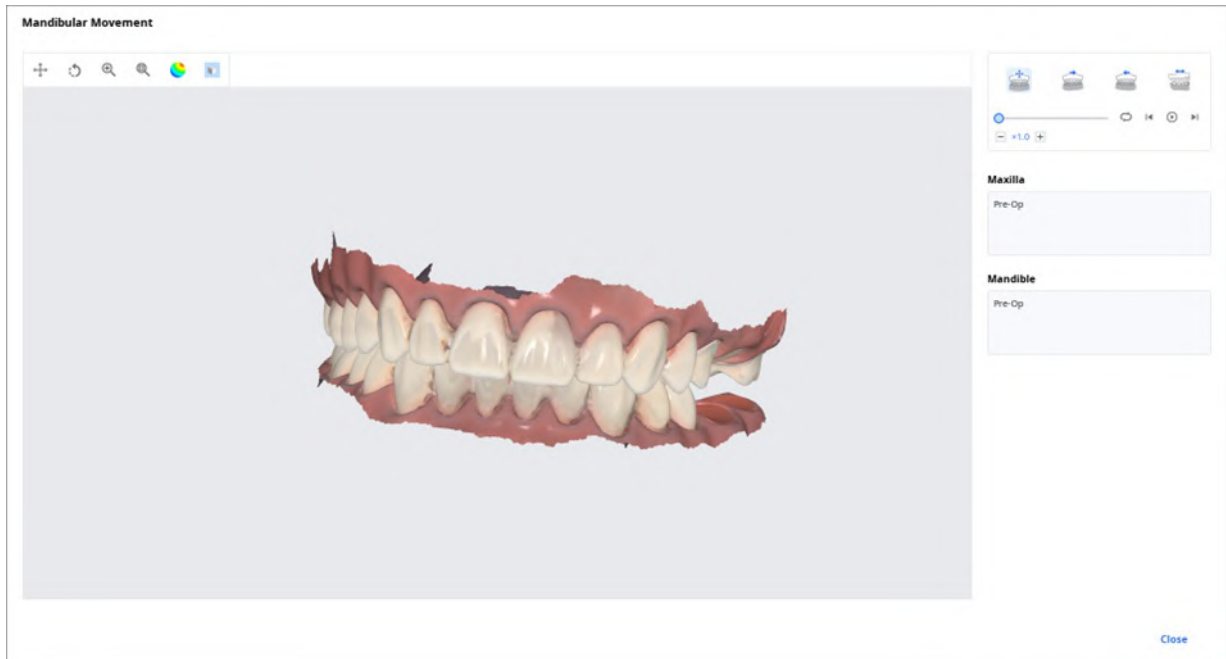

	Свободное движение	Воспроизводит запись свободного движения нижней челюсти.
	Левое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти влево.
	Правое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вправо.
	Протрузионное движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вперед.

Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов

Вы можете получить несколько результатов данных окклюзии из приложений для сканирования Medit.

Управлять этими результатами можно, используя предоставляемый Medit Link Просмотрщик файлов.

Как управлять несколькими результатами


При получении нескольких результатов окклюзии от Medit Scan for Clinics Medit Link предоставляет возможность выбора результата.

Список результатов упорядочен по имени, и вы можете выбрать один из элементов.

Выбранная модель будет показана в Дереве данных и Области отображения модели.



Свернуть список и изменить элемент можно, используя значки со стрелками.

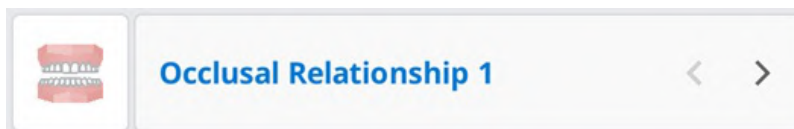

Параметры просмотра

Вы можете изменять параметры просмотра, чтобы настроить компоновку списка проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Фильтры статуса

Функция, которая позволяет показать или скрыть каждый фильтр, отражающий статус проекта. Скрытые фильтры статуса не отображаются на экране в Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

С помощью фильтров статуса вы с легкостью сможете найти нужный вам проект.

- Нажмите на статус, который вы хотите просмотреть, чтобы отобразить соответствующие ему проекты.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

Для каждого раздела доступны следующие параметры фильтрации:

Раздел	Фильтры статуса
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Элементы таблицы

Выберите элементы для отображения в списке проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Вы можете изменить порядок элементов таблицы или настроить ширину столбцов таблицы в списке для максимального удобства использования.

Для каждого раздела доступны следующие элементы таблицы:

Раздел	Элементы таблицы
Patient	Имя пациента/идентификатор пациента/пол/количество проектов/дата регистрации/дата рождения
Case Box	Статус/название проекта/дата рождения/информация формы/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
Order Box	Статус/название проекта/имя пациента/отсканирован/дата заказа/название лаборатории/запрашиваемая дата доставки/изменен
In Box	Статус/название проекта/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/изменен/название клиники
Work Box	Статус/название проекта/имя пациента/информация формы/изменен/запрашиваемая дата доставки/дата сканирования/название клиники/дата заказа

Тип просмотра

Меняйте тип просмотра в Case Box между форматами «Галерея» и «Список».

Для каждого раздела доступны следующие параметры типа просмотра:

Раздел	Параметры типа просмотра
Patient	Список
Case Box	Список/галерея
Order Box	В виде списка
In Box	В виде списка
Work Box	В виде списка

Группировка

Выберите вид группировки, чтобы классифицировать и упорядочить проекты в списке по выбранному параметру.

Для каждого раздела доступны следующие параметры группировки:

Раздел	Параметры группировки
Case Box	Нет/имя пациента/дата сканирования/дата заказа
Order Box	Нет/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
In Box	Нет/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
Work Box	Нет/запрашиваемая дата доставки

Примечание

Параметры группировки недоступны в разделах Patient, Case Talk и Trash Box.

Сортировка

Выберите вид сортировки, чтобы изменить порядок проектов в списке в соответствии с выбранным параметром.

Для каждого раздела доступны следующие параметры сортировки:

Раздел	Группировка	Параметры сортировки
Patient	-	Имя пациента/идентификатор пациента/дата рождения/дата регистрации/количество проектов
Case Box	Нет	Имя пациента/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Имя пациента	Изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/изменен/дата заказа/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/изменен/дата сканирования/название лаборатории
Order Box	Нет	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
In Box	Нет	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата заказа/название клиники
Work Box	Нет	Имя пациента /изменен/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента /изменен/название клиники


Примечание

Параметры сортировки недоступны в разделах Case Talk и Trash Box.

Фильтрация и поиск

Фильтрация по пациенту

Фильтруйте и отображайте проекты по имени пациента. Вы можете создать список, отфильтровав только тех пациентов, с которыми вам нужно работать.

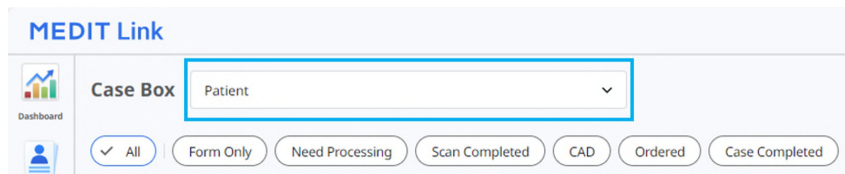


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Введите имя пациента.

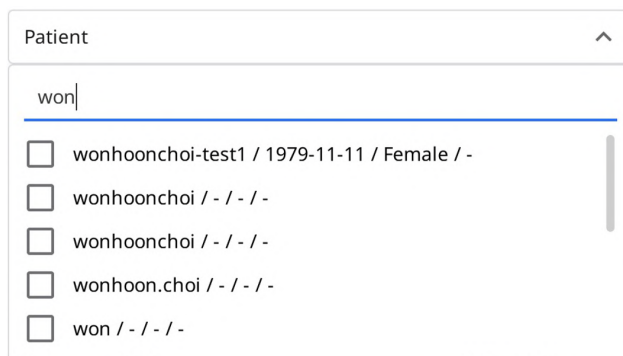

Patient

won

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -


☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ wonhoon.choi / - / - / -

☐ won / - / - / -

2. Выберите пациентов среди представленных ниже результатов поиска.

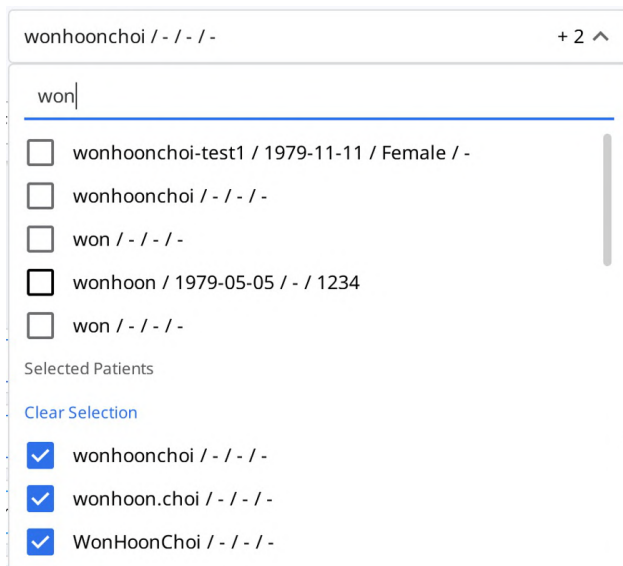

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. В списке начинают отображаться только те проекты, которые относятся к выбранным пациентам.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Фильтрация по дате

Эта функция позволяет фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного периода времени.

1. Задайте период времени.

2. Выберите нужный диапазон из списка.

- Все: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, последние изменения в которые были внесены в заданный период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение текущего месяца.
- Предыдущий месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение прошлого месяца.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Расширенные возможности поиска

Используйте возможности поиска, чтобы быстро найти нужную вам информацию.

Для каждого раздела доступны следующие критерии поиска:

Patient	Все, имя пациента, идентификатор пациента
Case Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, информация формы, название лаборатории
Order Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории, номер заказа
In Box	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа
Work Box	Все, название проекта, имя пациента, информация формы, название клиники, номер заказа
Case Talk	Название Case Talk (содержит), имя пациента (равно)
Trash Box (клиника)	Все, название проекта, имя пациента, название лаборатории, кем удалено
Trash Box (лаборатория)	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, кем удалено

Вы можете задать критерии поиска и выбрать такие логические значения как «Содержит» и «Равно».

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов

Создание проектов

Создание проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. Введите основную информацию, такую как имя пациента и название проекта.
 - Если вы введете имя, которого нет в списке пациентов, будет добавлен новый пациент.
 - Если же вы введете имя, которое есть в списке пациентов, вы сможете выбрать его из списка.
 - При регистрации проекта для существующего пациента нажмите на значок списка пациентов, чтобы выбрать существующего пациента.



- В диалоговом окне «Список пациентов» вы можете зарегистрировать нового пациента или отредактировать информацию о существующем пациенте.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains


	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-03-08	
☐	Worhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Нажмите «Записать и сканировать», чтобы завершить регистрацию проекта и приступить к сканированию.
 - **Зарегистрировать:** Вы будете перенаправлены на главную страницу. Это полезно при регистрации нескольких проектов.
 - **Записать и сканировать:** Перемещает на вкладку «Форма» для регистрации информации формы для проекта.

Создание проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

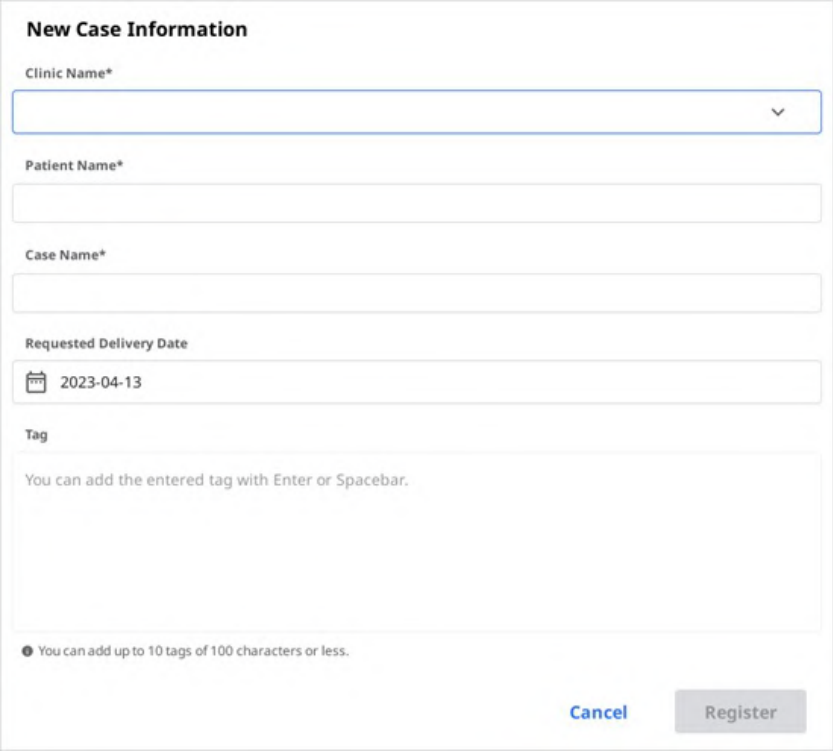

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Введите или выберите название клиники.
3. Введите имя пациента и название проекта. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Введите ожидаемую дату доставки с учетом даты завершения работы.
5. После регистрации проекта вы будете перенаправлены на главную страницу.

Редактирование проектов

Редактирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Щелкните значок поиска, чтобы изменить имя пациента. Обратите внимание, что его нельзя редактировать напрямую, но вы можете найти в списке имя пациента, которым хотите заменить текущее имя, и отредактировать его информацию.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Отметьте имя пациента, которым вы хотите заменить текущее.
- Чтобы создать нового пациента, нажмите кнопку «Новый пациент».
- Используйте кнопку «Редактировать», чтобы изменить зарегистрированную информацию о пациенте.
- Нажмите «Применить», чтобы завершить процесс.

Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)

- Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

2. Нажмите «Применить» после завершения редактирования.

Примечание

Вы не можете редактировать информацию проектов, полученных через заказ в In Box.

Клонирование проектов

Клонирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Вам будет предложено ответить на вопрос, какой тип информации вы хотите клонировать в новый проект.

3. Выберите, следует ли реплицировать только информацию формы или же полностью все данные.
4. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».

Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Продублируйте все данные, чтобы создать новый проект.
3. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».


Удаление проекта

Удаление проекта (клиника и лаборатория)

1. Нажмите на значок «Удалить».



2. Нажмите «OK», чтобы удалить проект.

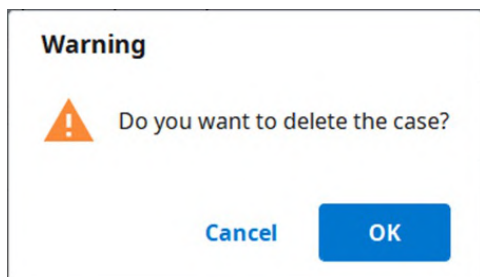

3. Удаленные проекты перемещаются в Trash Box и при необходимости могут быть восстановлены.

Информация формы

Вы можете ввести информацию формы в зависимости от подключенной программы и типа лечения.

Введенная вами информация будет использоваться в качестве базовой для работы в программах сканирования или CAD и оформления заказов.

Регистрация информации формы в Case Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите, собираетесь ли вы вводить информацию о лечении по зубам или по дуге.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке заказов.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Регистрация информации формы в Work Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите программу сканирования, которую хотите использовать.
2. Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
3. Методы могут отличаться в зависимости от выбранной программы сканирования.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зубы	☐	☐
Дуга	☐	☐
Гибкий мульти-штамп	☒	☐
Мульти-штамп	☒	☐

4. Выберите номера зубов, дуги или штампа для процесса сканирования.
5. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Соединение зубов в мост

Вы можете соединить несколько зубов в мост, если один и тот же материал применяется к нескольким соседним зубам. Нажмите на значок моста рядом с выбранными зубами, чтобы соединить или разъединить их.



Настройка параметров сканирования

В зависимости от программы, с которой вы работаете, вам доступны различные параметры сканирования.

Выбранные параметры передаются каждой программе сканирования.

Medit Scan for Labs

Общие параметры

	Соседние зубы	Отмечает препарированные и соседние зубы и передает эту информацию в программу сканирования.
	Антагонист	Автоматически отмечает антагониста и передает эту информацию в программу сканирования.
	Артикулятор	Отображает параметры выбора артикулятора в программе сканирования.
	Маркер движения	Позволяет использовать стратегию сканирования «Движение челюсти» в программе сканирования.

Опции по зубам

	Сканмаркер	Позволяет задать стратегию сканирования сканмаркера в программе сканирования.
	Предоперационное сканирование	Позволяет задать стратегию сканирования предоперационной модели в программе сканирования.
	Сканирование восковой модели	Позволяет задать стратегию сканирования восковых моделей в программе сканирования.

Добавление в Избранное

Вы можете быстро выбрать продукт, просто добавив его в Избранное.

Список избранного управляется подобно шаблону, и им можно поделиться с помощью функций экспорта и импорта.

Как добавить в Избранное

1. Выберите номер зуба.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Тип – Метод – Материал – Оттенок могут быть добавлены в Избранное, даже если выбраны не все из них.
3. Нажмите на звездочку.

4. Комбинация выбранных параметров, за исключением номера зуба, находится в вашем списке избранных поисковых запросов.

Управление избранными шаблонами

Вы можете регистрировать, управлять и обмениваться различными типами шаблонов.

Добавить	Добавляет новый шаблон.
Переименовать	Переименовывает текущий шаблон.
Удалить	Удаляет текущий шаблон.
Экспортировать	Экспортирует текущий шаблон в файл.
Импорт	Импортирует файл шаблона.

Работа по сканированию/CAD

Процесс сканирования

На основании введенной информации вы переходите к сканированию.

1. Введите или сохраните информацию о лечении и выберите необходимые параметры сканирования.
2. Нажмите кнопку «Сканировать» в правом верхнем углу окна.

Процесс CAD

Для подключения Medit Link к DentalCAD Medit Link предоставляет приложение для интеграции DentalCAD.

1. Установите приложение DentalCAD Integration в App Box.
2. Перейдите к сведениям о проекте и нажмите на значок приложения DentalCAD Integration на панели «Быстрый запуск».
3. Во всплывающем диалоговом окне укажите путь к приложению DentalCAD, установленному на вашем компьютере.
4. Введите данные отсканированного проекта и нажмите значок приложения DentalCAD Integration, после чего появится диалоговое окно для создания файла dentalProject.
5. Зарегистрируйте информацию формы для DentalCAD и нажмите «Открыть», чтобы открыть программу CAD.
6. Если вы установите приложение DentalDB Integration, результаты CAD будут автоматически доставлены по указанному пути сохранения в exocad. (Только для учетных записей лабораторий.)


Использование дополнительных приложений

Добавление на панель «Быстрый запуск»

Вы можете напрямую запускать различные дополнительные приложения, нажимая на значки установленных приложений на панели «Быстрый запуск». Перетаскивая значки приложений, можно менять их порядок.



Управление запуском приложений

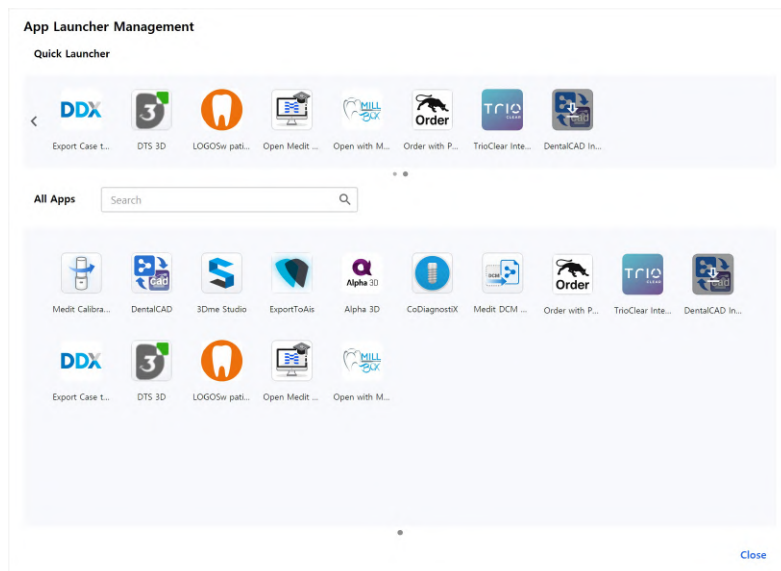

Быстрый запуск

Вы можете определить, какие приложения будут отображаться на панели «Быстрый запуск». Можно изменить порядок значков приложений, перетаскивая их, или создать папки, чтобы сгруппировать похожие приложения вместе для их упорядочивания.

Все приложения

Здесь будут отображены все установленные вами приложения. Вы можете нажать правой кнопкой мыши на значок приложения, чтобы добавить его в «Быстрый запуск». В контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, вы также можете выбрать запуск, установку или удаление приложения.

Получение файлов результатов

Экспорт файлов результатов сканирования

Помимо обмена результатами с партнерами через заказы, Medit Link позволяет сохранять файлы результатов в нужном файловом формате с помощью функции экспорта.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения файлов результатов.
Имя папки	Система создает новую папку и сохраняет в ней все файлы результатов. Имя папки по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя папки напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени папки.
Имя файла	Задайте имя файла для результата. Имя файла по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя файла напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени файла
Тип	Выберите программу проектирования, которую вы хотите использовать. Medit Link автоматически настроит файлы в соответствии с вашим выбором, что позволит вам приступить к дизайну без необходимости дополнительного выравнивания по осям.
Формат файла сетки	Укажите формат файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать файлы	Сжимает все результаты в один файл.
Объединить файлы при экспорте	Объединяет результаты сканирования верхней или нижней челюсти с данными сканирования отдельных зубов. Это полезно, когда импорт нескольких файлов в программу невозможен.
Экспорт всех окклюзионных взаимоотношений	Когда приложение для сканирования создает несколько результатов окклюзии, их можно экспортировать одновременно.
Сохранить информацию о проекте в формате PDF	Сохраняет информацию о проекте в формате PDF вместе с результатами.

Экспорт файлов результатов из списка проектов

С помощью функции «Экспортировать», расположенной над списком проектов в Case Box и Work Box, вы можете экспортировать файлы результатов одного или нескольких проектов одновременно.

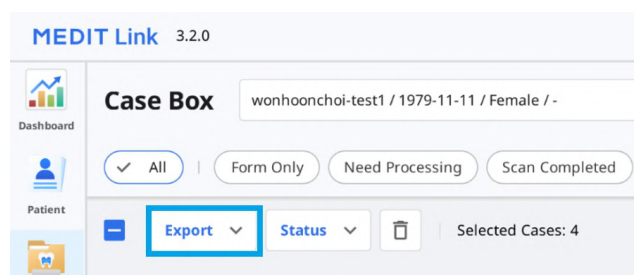

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Выберите из списка все проекты, файлы результатов которых вы хотите экспортировать.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 ☐ **Status** ▾ |
 ☐ **Selected Cases:** 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Нажмите «Экспортировать» и в выпадающем меню выберите «Файлы результатов».

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Задайте папку назначения, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit ▾

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF


Close **Export**

Примечание

Поля «Имя папки» и «Имя файла» недоступны для редактирования при экспорте файлов для нескольких проектов.


Имя папки и имя файла создаются автоматически в соответствии с правилами, которые вы установили для параметров «Правило для имени папки» и «Правило для имени файла» в разделе Настройки > Параметры экспорта.

5. Нажмите «Экспортировать».
6. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

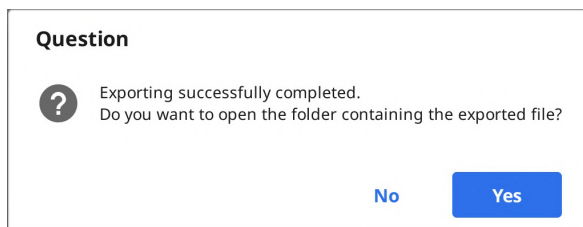

Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов

Вы можете экспортировать файлы результатов сканирования для проекта с помощью расположенного в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов» значка «Экспортировать».

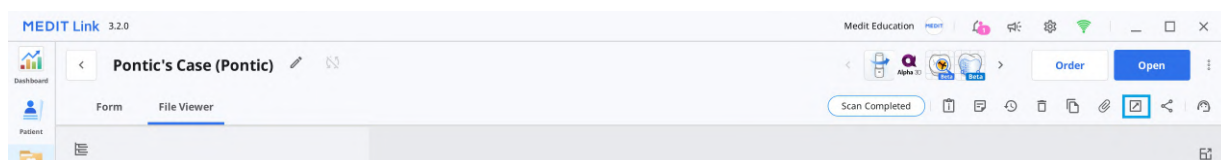

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите значок «Экспортировать» в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов».



4. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. На вкладке «Список файлов» вы можете выбрать необходимые для проекта файлы, сняв выделение с ненужных.

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]

☒ [Icon] Maxilla

- ☒ Base

☒ [Icon] Mandible

- ☒ Base

☒ [Icon] Occlusion

- ☒ First Occlusion
- ☒ Second Occlusion

☒ [Icon] Dynamic Occlusion

- ☒ Free
 - ☒ Maxilla
 - ☒ Mandible

☒ [Icon] Face Scan Data

- ☒ Face Scan Data

[Close](#) [Export](#)

6. Нажмите «Экспортировать».
7. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Экспорт файлов результатов из дерева данных


Вы можете экспортировать файл или файлы определенной группы данных из раскрывающегося меню в Просмотрщике файлов.

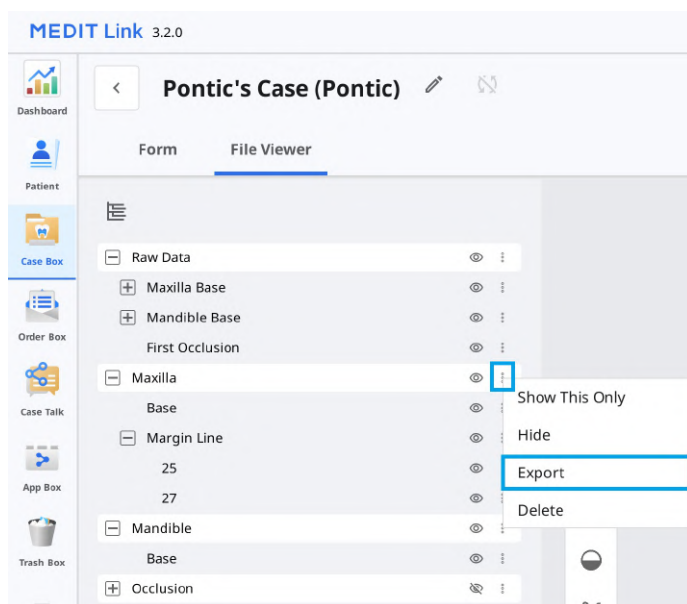

1. Перейдите в Case Vox или Work Vox.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите на значок трех точек, расположенный рядом с группой данных или объектом в дереве данных, на вкладке «Просмотрщик файлов».

...

4. Затем нажмите «Экспортировать».

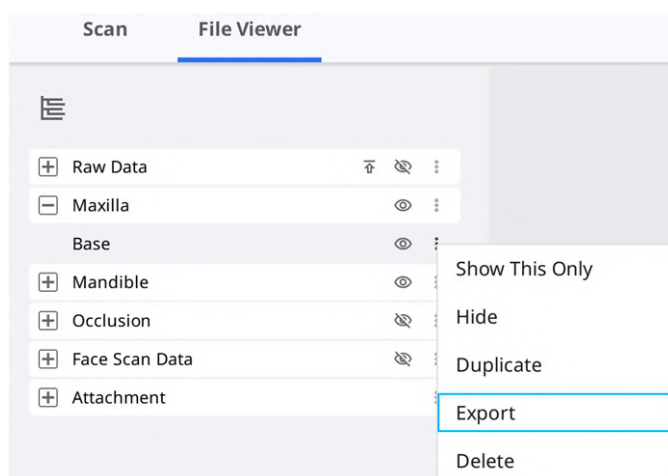

5. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Вы можете видеть, что в списке файлов отображаются только те файлы, которые вы выбрали в дереве данных.

Export Files in This Case

Options File List

☒ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Нажмите «Экспортировать».
8. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Экспорт списка проектов в формате CSV


Medit Link предоставляет функцию экспорта списка проектов в формате CSV.

Вы можете экспортировать список проектов с основной информацией и с легкостью управлять проектами.

1. Перейдите в Case Box, Order Box, In Box или Work Box.
2. Выберите проекты, которые хотите экспортировать.

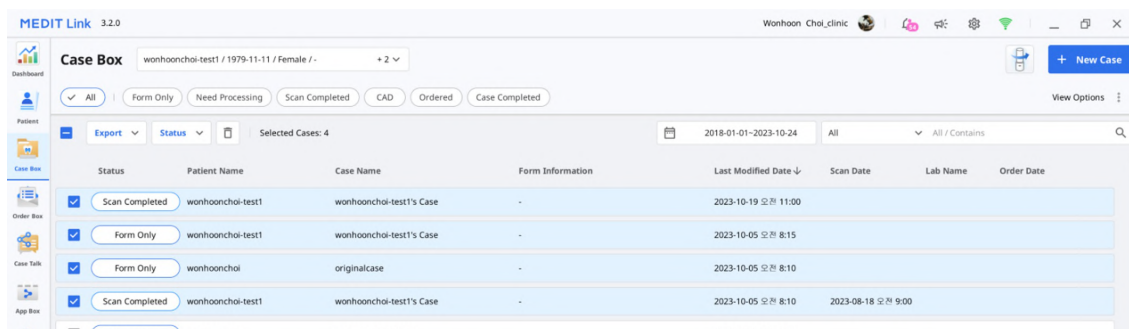

3. Нажмите «Экспортировать» и выберите «Список проектов (как показано)» или «Список проектов (со всеми пунктами)».

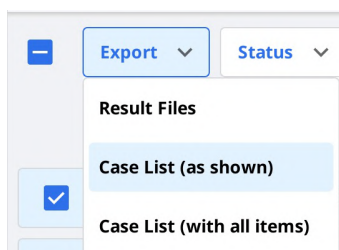

Примечание

Список проектов (как показано): экспорт списка проектов с элементами, отображаемыми в данный момент на экране. Перейдите в раздел Параметры просмотра > Элементы таблицы, чтобы отобразить или скрыть элементы по своему усмотрению.

Список проектов (со всеми пунктами): экспорт списка проектов со всеми элементами, включая статус, название проекта, дату рождения, информацию формы, дату изменения, дату сканирования, дату заказа и название лаборатории.

4. Задайте путь и имя файла, затем сохраните список.
5. Список проектов сохраняется в виде CSV-файла.


Экспорт линии края

В Medit Scan for Clinics реализована функция создания линии края, а с помощью Medit Link можно передать линию края в программу CAD.

Экспорт линии края в виде цвета

Как правило Medit Link преобразует линию края в цвет и экспортирует результат вместе с верхней или нижней челюстью. Вы можете создать линию края в своей программе CAD, ориентируясь на информацию о цвете.

Пример:

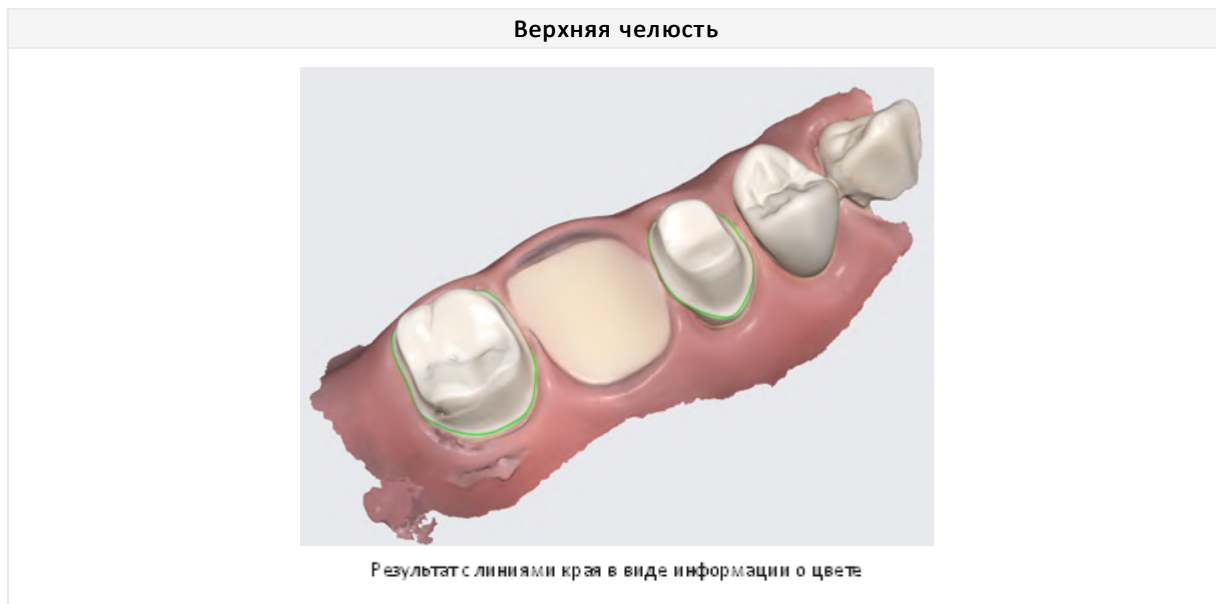

Примечание

Эта функция доступна для форматов, которые включают информацию о цвете, таких как meditMesh, OBJ и PLY. Линия края не преобразуется в STL.

Примечание



Тип > 3Share не поддерживает эту функцию.

Экспорт линии края в виде файла

В случае с exocad Medit Link экспортирует линию края в файл «~margin.xyz», который можно импортировать в exocad напрямую.

Этот файл можно использовать в exocad без дополнительной работы.

Пример:

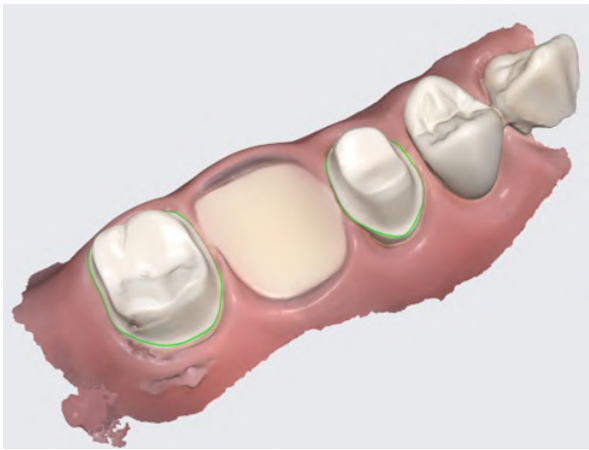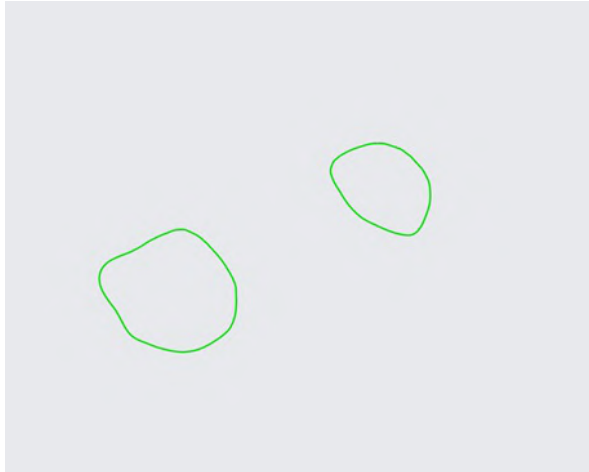Верхняя челюсть	Линия края
 Результат с линиями края в виде информации о цвете	 Линии края экспортируются в виде отдельных файлов

Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link

Medit Link поддерживает функцию скачивания файлов.

Если вы хотите получить файлы результатов без установки приложения Medit Link, вы можете скачать файлы из веб-сервиса Medit Link.

Примечание


Чтобы скачать файлы из интернета, данные должны быть загружены в облачное хранилище Medit.

Функция скачивания доступна для следующих разделов веб-сервиса Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Вы можете найти кнопку «Скачать» в правом верхнем углу.

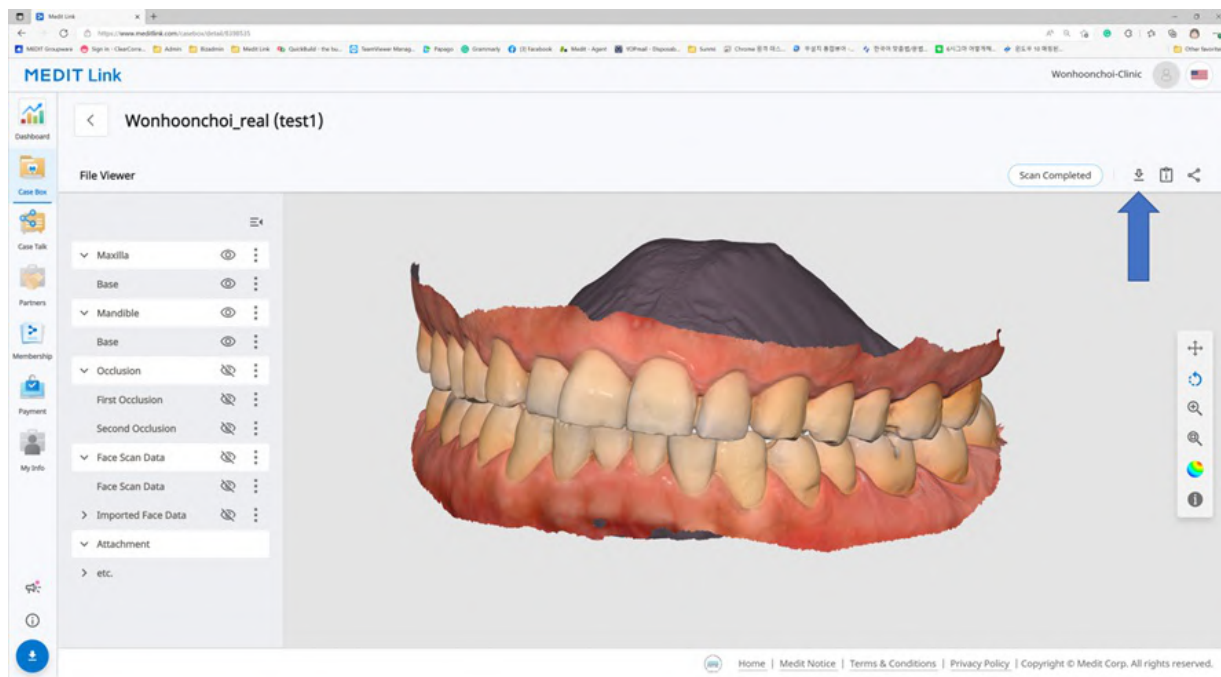


Web Viewer

Когда вы делитесь проектом с помощью Case Talk, вы можете указать, разрешать скачивание или нет.

Если вы установите флажок «Предоставить разрешение на скачивание» и предоставите общий доступ к проекту, все пользователи, которые подключатся к общей ссылке, смогут скачать файлы.

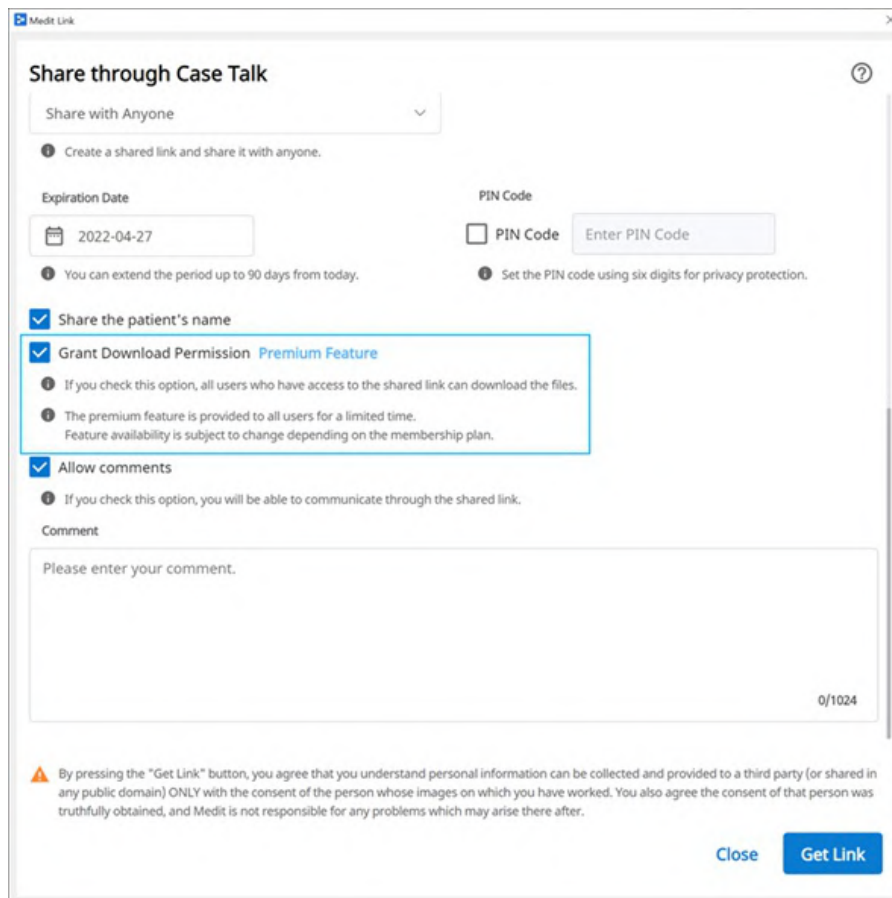


В Web Viewer вы можете найти значок «Скачать» в правом верхнем углу.

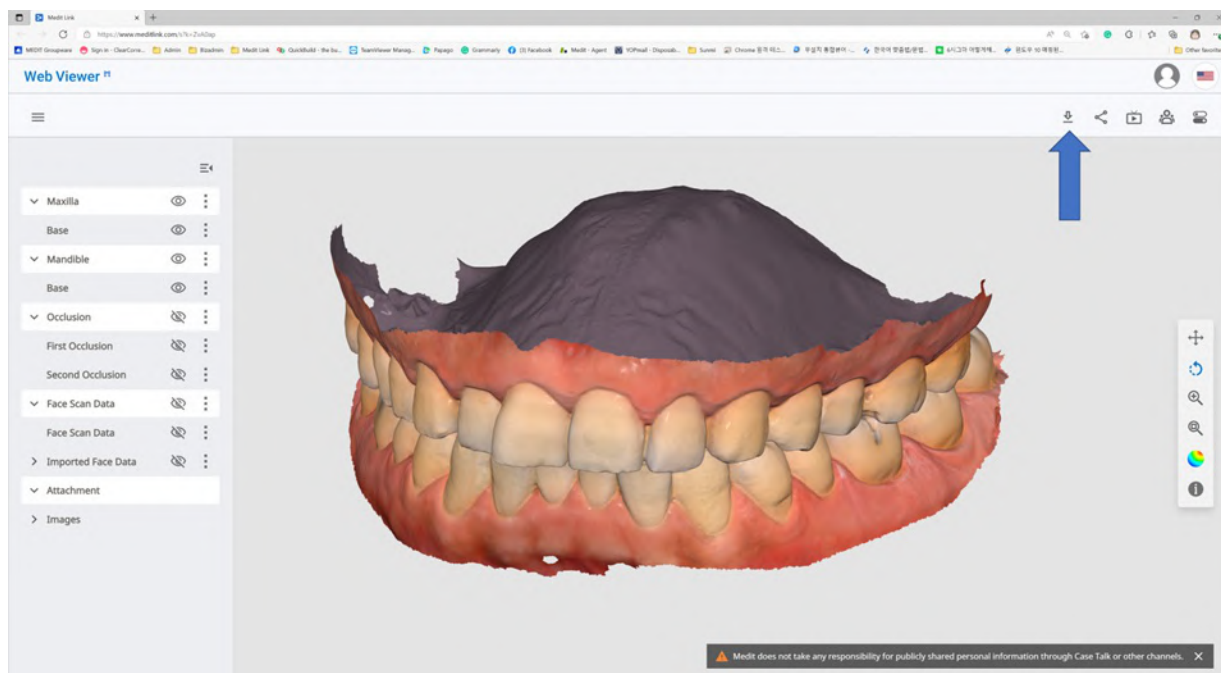

1. Нажмите «Скачать».



2. Выберите формат файла сетки в открывшемся диалоговом окне скачивания.

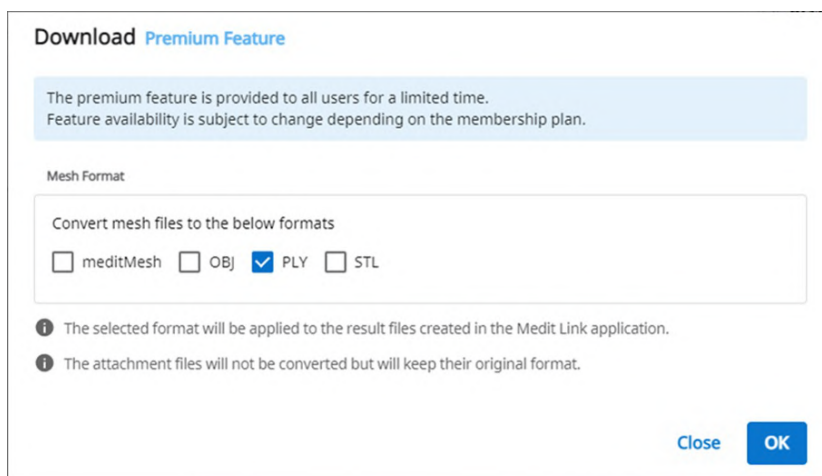

3. Затем нажмите «ОК».

Заказ/управление проектами

Вы с легкостью можете заказать проект с данными, полученными из подключенных программ и прикрепленными пользователем.

Заказ проектов

Вы можете оформить заказ для своих партнеров в Case Box.

1. Нажмите кнопку «Заказ».
2. Проверьте информацию, необходимую для вашего заказа.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Выберите партнера.
4. Проверьте информацию о продукте на вкладке «Список заказов».
 - Решите, следует ли делиться именем пациента.
5. Проверьте файлы для заказа на вкладке «Список файлов».
6. Введите желаемую дату доставки.
 - Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
7. Добавьте заметки или теги для вашего партнера для уточнения каких-либо деталей.
8. Когда программа сканирования сформирует результаты множественной окклюзии, вы сможете отправить все результаты окклюзии одновременно, установив флажок «Заказать все окклюзионные взаимоотношения».
9. Продолжите оформление заказа.

Подтверждение заказа (In Box)

- Примите заказ после его получения.
- Принятые заказы будут перенаправлены в Work Box.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Confirm Order' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Отменить заказ (Order Box)

- Вы можете отменить заказ до того, как его примет ваш партнер.
- Отмененные проекты можно заказать повторно.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and a 'Cancel' button highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Отклонить заказ (In Box)

- Вы можете отклонить полученный заказ.
- Отклоненные проекты можно заказать повторно.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Reject' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Проверка заказанных проектов

Детали заказанного вами проекта можно просмотреть в Order Box в учетной записи клиники. Вы также можете просмотреть проект, полученный через In Box, в учетной записи лаборатории.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The top bar includes the logo, version, and user name 'Wonhoon Choi'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'test's Case - Clone / wh-clinic-ds...', contains fields for Order ID (13455074), Patient Name (***), Partner Name (wh-clinic-dso-3), Scanned Date (2023-08-04 08:15:58), Order Date (2023-10-26 04:38), Requested Delivery Date (2023-11-02 08:00), and Expected Delivery Date (2023-11-02 08:00). The right panel, titled 'Order List', shows a table with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The table contains four rows of data for 'Inlay' orders using 'Multi-Layered Zirconia' material with 'None Shade'.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Информация о заказе	Информация, которую можно включить в заказ: номер заказа/имя пациента/имя учетной записи/дата сканирования/дата заказа/дата доставки/срок доставки/ заметки. Вы можете проверить детали заказанного продукта и подтвердить информацию о доставке.
Список заказов	Список заказов отображает подробную информацию о заказанном продукте.
Доставка	Введите/проверьте информацию о доставке.

Ввод информации о доставке (In Box)

Введите информацию о доставке для завершенного проекта и начните отгрузку.

1. Нажмите на вкладку «Доставка».
2. Введите информацию о доставке и нажмите «Зарегистрировать».

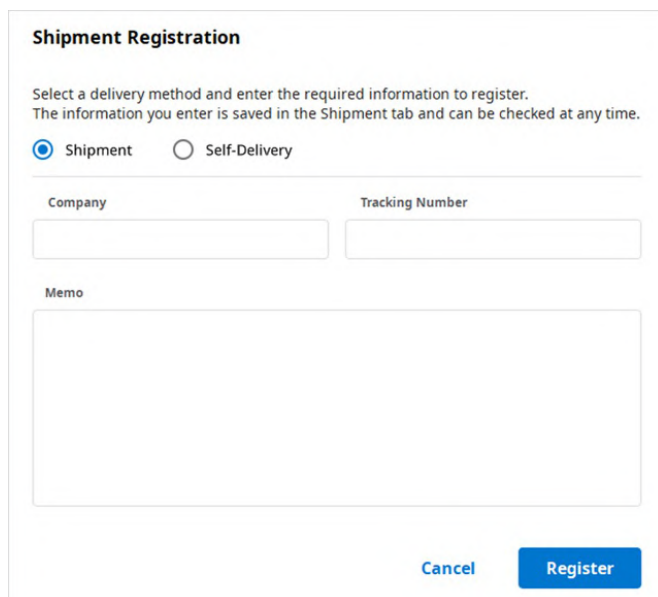


3. Введенная информация отправляется вашему партнеру.

Управление датой доставки

При размещении заказа вы можете указать ожидаемую дату доставки, и эта информация будет перенаправлена вашему партнеру.

Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)

- При заказе через Case Box вы можете ввести запрашиваемую дату доставки.

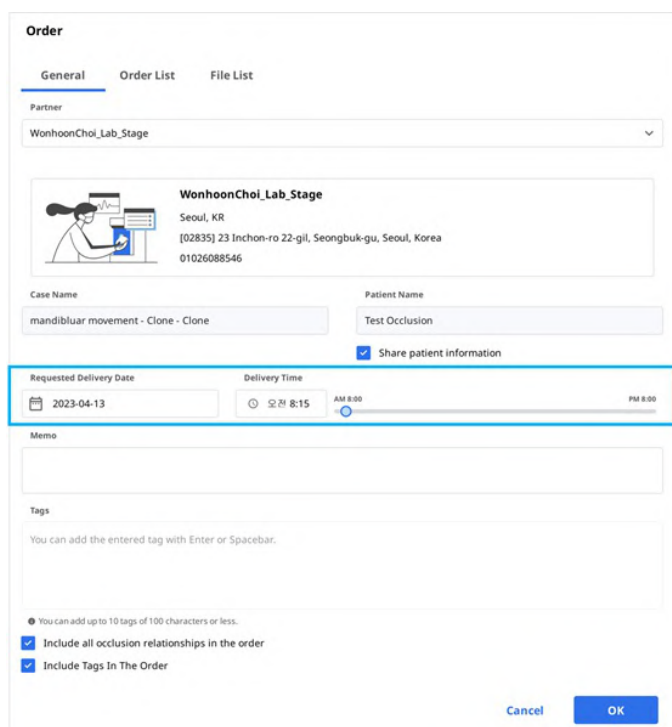

- Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.

- Введите дату/время, когда вы хотите получить продукты, и продолжите оформление заказа.
- Вы можете легко установить время с помощью ползунка.

Установка ожидаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)

- Вы можете ввести ожидаемую дату доставки для заказанного проекта в In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main window displays the order details for 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic'. The 'Expected Delivery Date' field is highlighted with a blue box, showing '2022-10-01' and '10:30'. The 'Order List' table on the right shows three items: Implant Crown, Cementation Ty..., and Multi-Layered Zirconia, all with a price of 0.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

1. Сверьте с партнером запрашиваемую дату доставки и внесите корректировки в расписание, используя кнопку «Редактировать».



2. Введите ожидаемую дату доставки с учетом фактического рабочего дня. При необходимости оставьте комментарий.
3. Нажмите «Применить».

The screenshot shows the date and time selection interface. The calendar displays March 2022, with the 17th selected. Below the calendar, the 'Delivery Time' is set to 11:45 AM. A 'Comment' field is also visible.

4. Ожидаемая дата доставки и заметки будут отправлены вместе с заказом.
 - Дату и заметки можно просмотреть в Order Box.
 - Вы можете изменить ожидаемую дату доставки, и эти изменения будут отправлены вашему партнеру.

5. Вы можете просмотреть историю проекта, используя кнопку «История».



Завершение проекта

Завершение проекта (Work Box, In Box)


После выполнения всех задач нажмите «Готово», чтобы завершить проект.

Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте

Вы можете найти значок с тремя точками справа от кнопок «Открыть» или «Отсканировать заново».



Завершите работу, нажав на значок и выбрав в выпадающем списке Done.

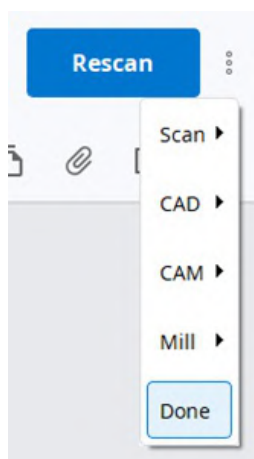

Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов

1. Перейдите в Work Box.
2. Выберите все проекты, которые необходимо завершить.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
Form Only	test's Case	test	-
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Нажмите «Статус» и выберите «Готово».

Завершение проекта (Case Box/Order Box)

После того, как проект будет завершен в лаборатории, клинике необходимо подтвердить проект, чтобы завершить весь процесс заказа.

Если лаборатория завершила свою работу, клиника сможет найти кнопку «Подтвердить доставку» в Order Box.


Нажав на нее, вы завершите весь процесс заказа, и статус проекта будет изменен на Case Completed.

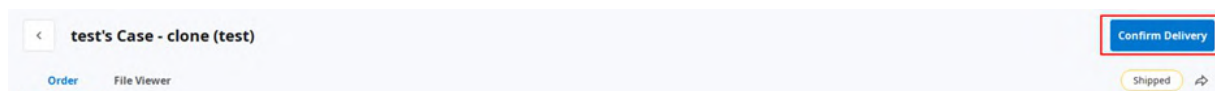

Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box

Проекты, которые не были заказаны в лаборатории, можно завершить в Case Box.

1. Перейдите в Case Box.
2. Выберите проект, который хотите завершить.

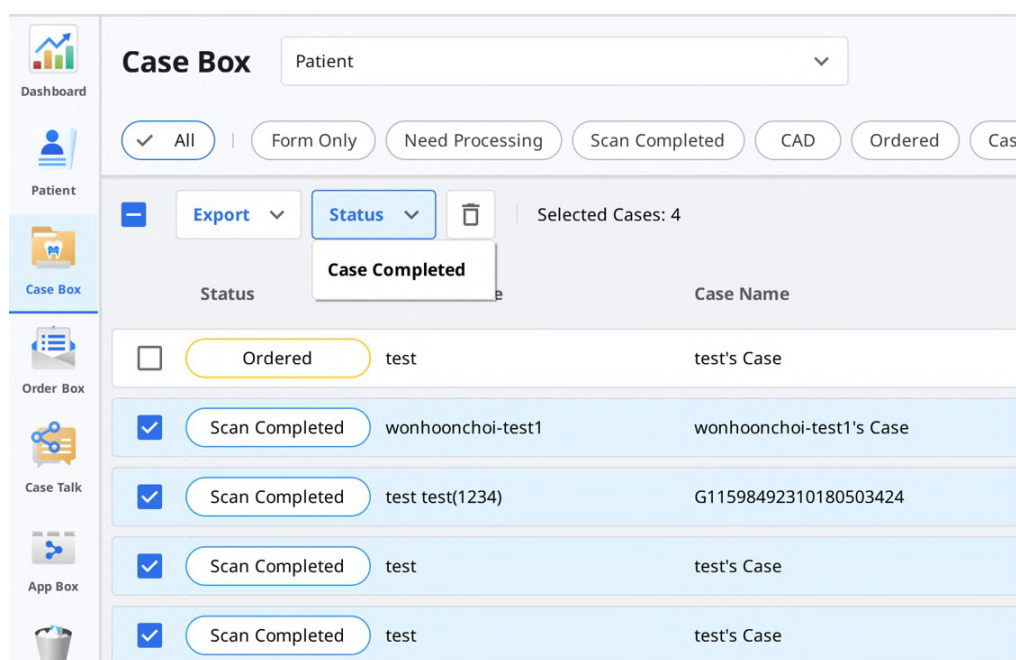


3. Нажмите «Статус» и выберите Case Completed.

Общение с помощью тегов

Вы можете добавить дополнительную информацию для своего проекта с помощью тегов и отправить их своим партнерам.

Добавление тегов при создании нового проекта

Вы можете вводить теги при создании нового проекта или редактировании информации о проекте.

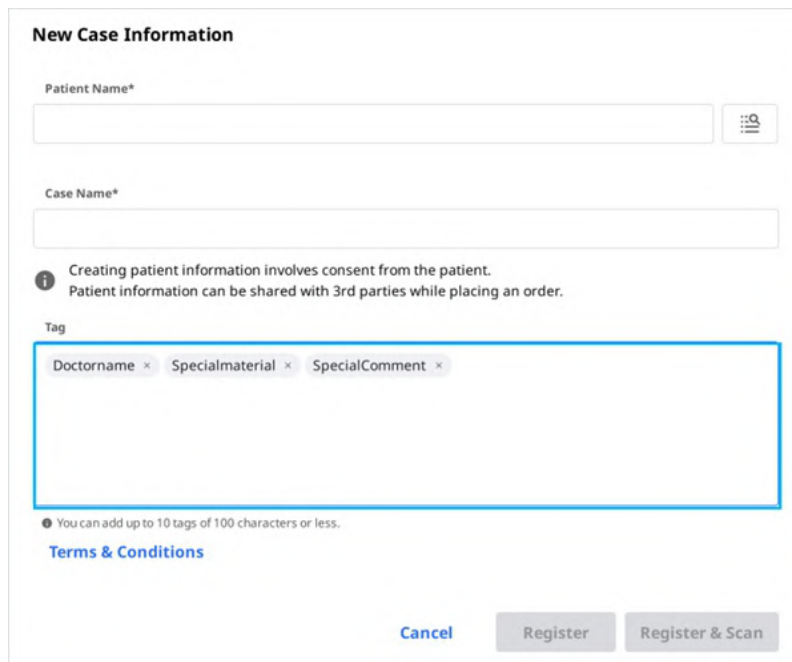

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Вы можете легко искать и выбирать теги, которые вы использовали раньше.

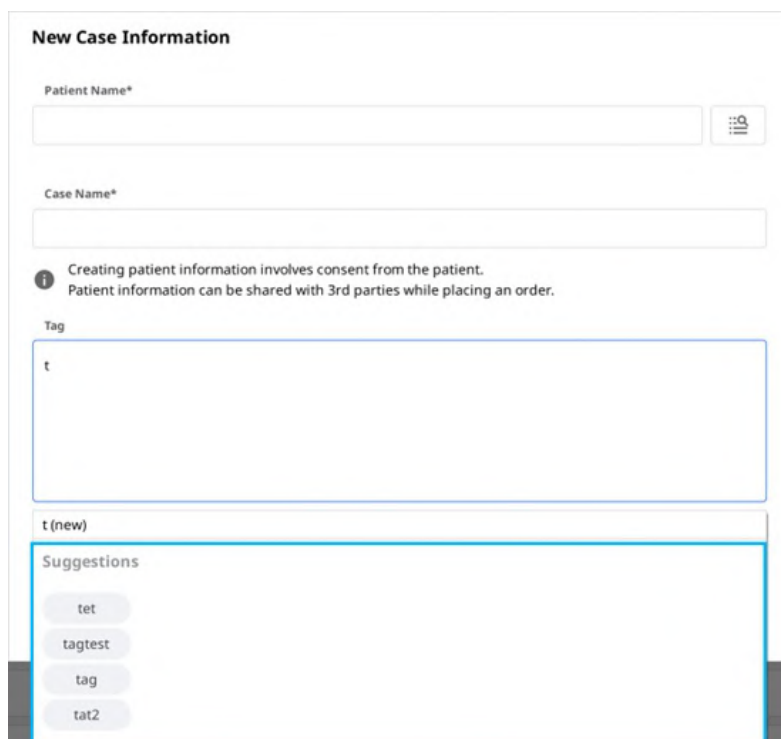

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Добавление тегов при оформлении заказа

Проверяйте и редактируйте теги в диалоговом окне «Заказ» во время оформления заказа.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: 8:15 AM

Memo

Tags: Doctorname Specialmaterial SpecialComment

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Просмотр тегов в сведениях о проекте

