

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Wprowadzenie	7
Medit Link	7
Omówienie usług	7
Usługa w chmurze	8
Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania	9

Medit Link > Instalacja

Wymagania systemowe	10
Wymagania systemowe dla Windows	10
Wymagania systemowe dla macOS	10
Wymagania systemowe dla serwisu internetowego	10
Zalecane dla przeglądarek	10
Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych	10
Instalacja w systemie Windows	11
Instalacja na macOS	14

Medit Link > Rozpoczęcie pracy

Zarejestruj się i Zaloguj	18
Strona internetowa Medit Link	18
Zarejestruj się	18
Logowanie i strona powitalna	20

Medit Link > Serwis internetowy Medit Link

Dashboard	22
Omówienie pulpitu Dashboard	22
Medit Insights	22
Subskrybuj Medit Insights	23
Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights	24
Patient	25
Szukaj pacjenta	25
Case Box/Work Box	26
Filtrowanie przypadków	26
Filtruj według pacjenta	26
Filtrowanie według statusu	27
Filtrowanie według czasu trwania	28
Filtruj według wyszukiwania	28
Szczegóły przypadku	28
Order Box/In Box	30
Szczegóły zamówienia	30
Zakładki w Order Box/In Box	30
Case Talk	31
Tworzenie Case Talk	31
Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania	32
Szczegóły Case Talk	34
Web Viewer	34
Adnotacja	35
Komentarze	36

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym	37
Drzewo danych	37
Kontrola drzewa danych	37
Kontrola modelu 3D	38
Partners	39
Wyszukiwanie partnerów	39
Moja lista partnerów	39
Zaproszenie od partnera	40
Membership	41
Członkostwo	41
Plan	41
Przechowywanie w chmurze	42
Subskrybuj	43
Anuluj subskrypcję	44
Informacje o rozliczeniach	45
Jak dodać metodę płatności	46
Jak zmienić metodę płatności	47
Zrealizuj	48
Zarejestruj Kod Realizacji	48
Aktywuj Kod realizacji	49
My Info	50
Moje konto	50
Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)	50
Mój skaner	51
Pozostałe menu	52
Powiadomienie & Aktualizacja	52
Powiązane strony internetowe	52
Pobierz Medit Link App	52

Medit Link > Medit Link App

Omówienie	54
Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.	54
Pasek tytułowy	55
Moje informacje	55
Powiadomienia	55
Powiadomienie i aktualizacja	56
Ustawienia	56
Status sieci	57
Ustawienia	59
Ogólne	59
Zarządzanie pamięcią masową	60
Ustaw okres	61
Lokalna pamięć masowa	61
Przechowywanie w chmurze	61
Ustaw podłączony program	62
Opcje eksportowania	62
Narzędzie do konwersji przypadków	64
Eksportuj przypadek	65
Importuj przypadek	66
Opcje proxy	67
O programie	68
Podręcznik użytkownika	68
Menu	69

Dashboard	69
Patient	69
Dodaj nowego pacjenta	70
Usuń pacjenta	70
Łączenie pacjentów	70
Case Box/Work Box	71
Zakładki w Case Box/Work Box	71
Funkcje w Case Box/Work Box	72
Order Box/In Box	73
Zakładki w Order Box/In Box	74
Case Talk	74
App Box	75
Wszystko	75
Medit Apps	75
Pobrane	76
Trash Box	76
Administrator synchronizacji przypadków	76
Prześlij	77
Pobierz	77
Powiązane strony internetowe	78
Przeglądarka plików	79
Drzewo danych	79
Narzędzia kontroli modelu	79
Kontrola modelu 3D	79
Kontrola obrazu 2D	80
Narzędzia funkcyjne	81
Przechwytywanie obrazu i Notatka	81
Przechwytywanie obrazów ortodontycznych	81
Wypełnij luki	82
Przycinanie	82
Optymalizuj dopasowanie okluzji	85
Ruch żuchwy	86
Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików	87
Jak zarządzać wieloma wynikami	87
Przeglądaj opcje	89
Filtry statusu	89
Typ przeglądania	90
Grupowanie	90
Sortowanie	90
Filtrowanie i wyszukiwanie	92
Filtruj według pacjenta	92
Filtr według daty	93
Zaawansowane możliwości wyszukiwania	93

Medit Link > Przepływ pracy

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek	95
Tworzenie przypadków	95
Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)	95
Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)	96
Edycja przypadków	96
Edycja przypadku w Case Box (Klinika)	96
Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)	97
Klonowanie przypadków	98

Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)	98
Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)	98
Usuwanie przypadku	99
Usuń przypadek (klinika i laboratorium)	99
Formularz informacji	100
Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.	100
Wprowadź na zakładce Formularz	100
Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.	100
Wprowadź na zakładce Formularz	100
Łączenie zębów do mostu	100
Ustawianie opcji skanowania	101
Medit Scan for Labs	101
Ogólne opcje	101
Opcje według zębów	101
Dodawanie do ulubionych	101
Dodaj do ulubionych	101
Zarządzaj ulubionymi szablonami	102
Praca nad Skanowaniem/CAD	103
Proces skanowania	103
Proces CAD	103
Korzystanie z aplikacji Add-in	103
Dodatek Szybkie uruchamianie	103
Zarządzanie uruchamianiem aplikacji	103
Szybkie uruchamianie	104
Wszystkie aplikacje	104
Uzyskaj pliki wyników	105
Eksportuj pliki z wynikami skanowania	105
Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków	106
Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików	108
Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych	109
Eksportuj listę przypadków jako CSV	111
Eksport linii brzegowej	112
Eksportuj linię brzegową jako kolor	112
Eksportuj linię brzegową jako plik	112
Pobierz pliki z Medit Link Web	113
Case Box/Work Box	113
Web Viewer	114
Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami	116
Zamawianie przypadków	116
Potwierdź zamówienie (In Box)	116
Anuluj zamówienie (Order Box)	117
Odrzucenie zamówienia (In Box)	117
Sprawdzanie zamówionych przypadków	117
Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)	117
Zarządzanie terminem dostawy	118
Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)	118
Ustawianie przewidywanej daty dostawy (konto laboratorium)	119
Zakończenie przypadku	120
Zakończ (Work Box/In Box)	120
Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku	120
Zakończ wiele przypadków z listy przypadków	120
Zakończ (Case Box/Order Box)	120
Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.	121

Komunikuj się za pomocą tagów	122
Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku	122
Dodaj tagi podczas składania zamówienia	123
Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.	123

Wprowadzenie

Medit Link

Medit Link to narzędzie do współpracy zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy klinikami i laboratoriami, aby zapewnić optymalny przebieg pracy dla każdej ze stron.

Oferuje zróżnicowane funkcje w oparciu o typ i uprawnienia każdego konta. Program zapewnia przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania przepływem pracy, od skanowania za pomocą skanerów jamy ustnej i modeli, zamawiania przypadków, po projektowanie i wykonywanie protez.

Medit Link składa się z usługi internetowej i aplikacji komputerowej.

Omówienie usług

		Web	Aplikacja
		• Rejestracja i zarządzanie kontem • Wyszukaj i zarządzaj partnerami • Udostępniaj przypadki poprzez Web Viewer z linkiem do udostępniania • Uzyskaj dostęp do przypadków wykonanych z aplikacji • Zarządzaj zamówieniami	• Wprowadź Formularz informacji • Skanuj • Zarządzaj zamówieniami • Połącz się z CAD • Zarządzaj pacjentami
Klinika	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoimi klinikami oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj, składaj zamówienia i zarządzaj pacjentami. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorium	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoim laboratorium oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj i zarządzaj zamówieniami. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Usługa w chmurze

Medit Link obsługuje automatyczne przesyłanie/pobieranie baz danych i plików poprzez AWS (Amazon Web Services).

Dane przechowywane w chmurze są automatycznie synchronizowane z komputerami wielu użytkowników w organizacji, dzięki czemu mogą oni uzyskać dostęp do tych samych danych z dowolnego komputera w dowolnym czasie. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem chmury zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych. Zapewnia to bezpieczeństwo danych nawet w przypadku utraty danych w wyniku nagłej awarii komputera.

Usługa w chmurze umożliwia partnerskim dentystom i laboratoriom szybkie udostępnianie danych bez kłopotliwego przesyłania skanów pocztą elektroniczną lub manualnie. Wszystkie dane, w tym informacje o pacjentach, są bezpiecznie zaszyfrowane, przechowywane i przesyłane. Medit jest zgodny z przepisami i regulacjami medycznymi, takimi jak HIPAA i GDPR.

Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania

Medit Link oferuje własny system zamówień.

- Medit Link pozwala użytkownikom nawiązywać współpracę między dentystami i laboratoriami dentystycznymi oraz szybko i łatwo udostępniać dane.
- Możesz sprawdzać i zarządzać statusem zamówienia.

Wymagania systemowe

Uwaga

Prosimy zapoznać się z wymaganiami systemowymi dla Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs, jeśli chcesz używać oprogramowania do skanowania ze swoim skanerem.

Wymagania systemowe dla Windows

	Laptop & Komputer stacjonarny
PROCESOR	Intel Core i5 2.6 GHz lub wyższy
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
GRAFIKA	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) lub wyższa / lub równoważna karta graficzna AMD
OS	Windows 10 64 Bit (nieдоступny w wersji 32 Bit) lub wyższy

Wymagania systemowe dla macOS

	Mac
Procesor	M1 z 8-rdzeniowym, 7-rdzeniowym GPU, 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
OS	Monterey 12 lub wyższy

Wymagania systemowe dla serwisu internetowego

Zalecane dla przeglądarek

	Przeglądarki
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych

	Android	iOS
Urządzenie	Odpowiednik Galaxy S7 lub nowszy	Odpowiednik iPhone'a 7 lub wyższy
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
PAMIĘĆ RAM	3 GB lub więcej	2 GB lub więcej
AP	Powyżej Snapdragon 710	A10 Fusion

Instalacja w systemie Windows

Medit Link jest instalowany w pakiecie z programami do pozyskiwania skanów - Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs.


1. Uruchom Medit_LinkSetup.exe.
2. Wybierz język instalacji.
3. Wybierz folder do zainstalowania Medit Link. Przeczytaj i zaakceptuj zasady i warunki licencji i kliknij "INSTALUJ".

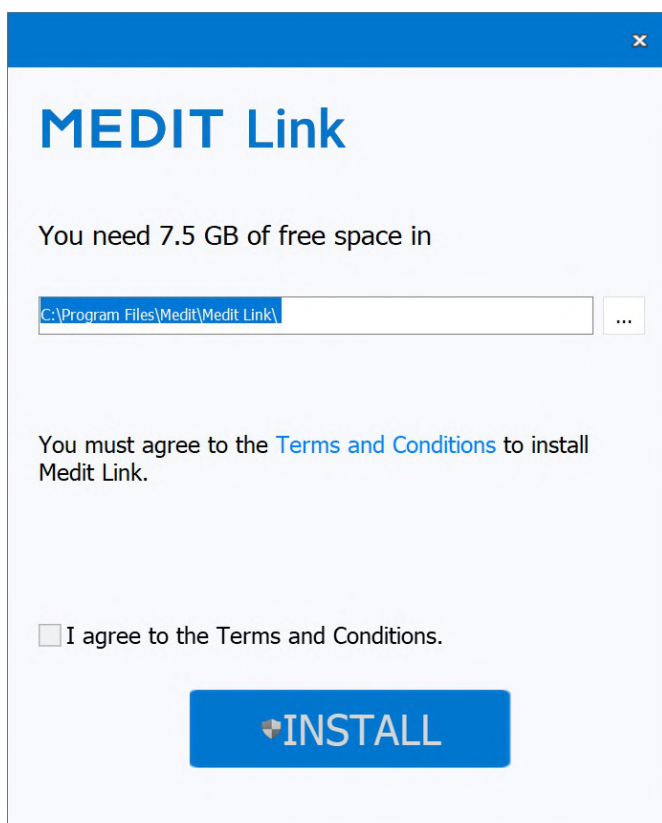

4. Upewnij się, że kabel skanera jest odłączony od komputera przed przejściem do następnego kroku. Instalacja może nie postępować, jeśli skaner jest podłączony do komputera.
5. Program zostanie zainstalowany automatycznie i może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj ani nie odłączaj komputera do momentu zakończenia instalacji.



6. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer. Możesz kontynuować bez ponownego uruchamiania komputera, jeśli nie masz skanera.

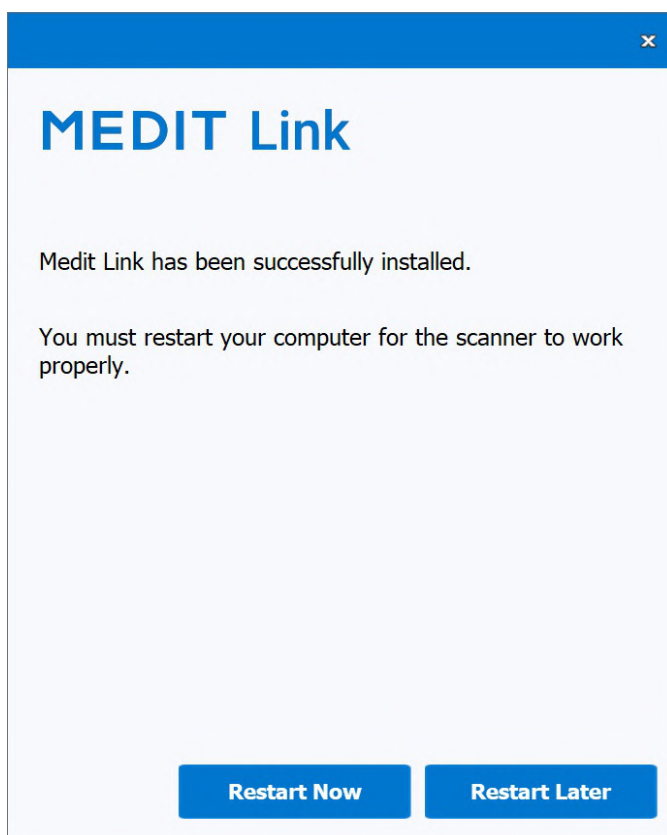


 Uwaga

Jeśli po zakończeniu instalacji nie uruchomisz ponownie komputera, skaner może nie działać prawidłowo.


Instalacja na macOS

Medit Link jest instalowany jako pakiet z Medit Scan for Clinics.


1. Uruchom Medit_Link_x.x.x.pkg i kliknij "Dalej".

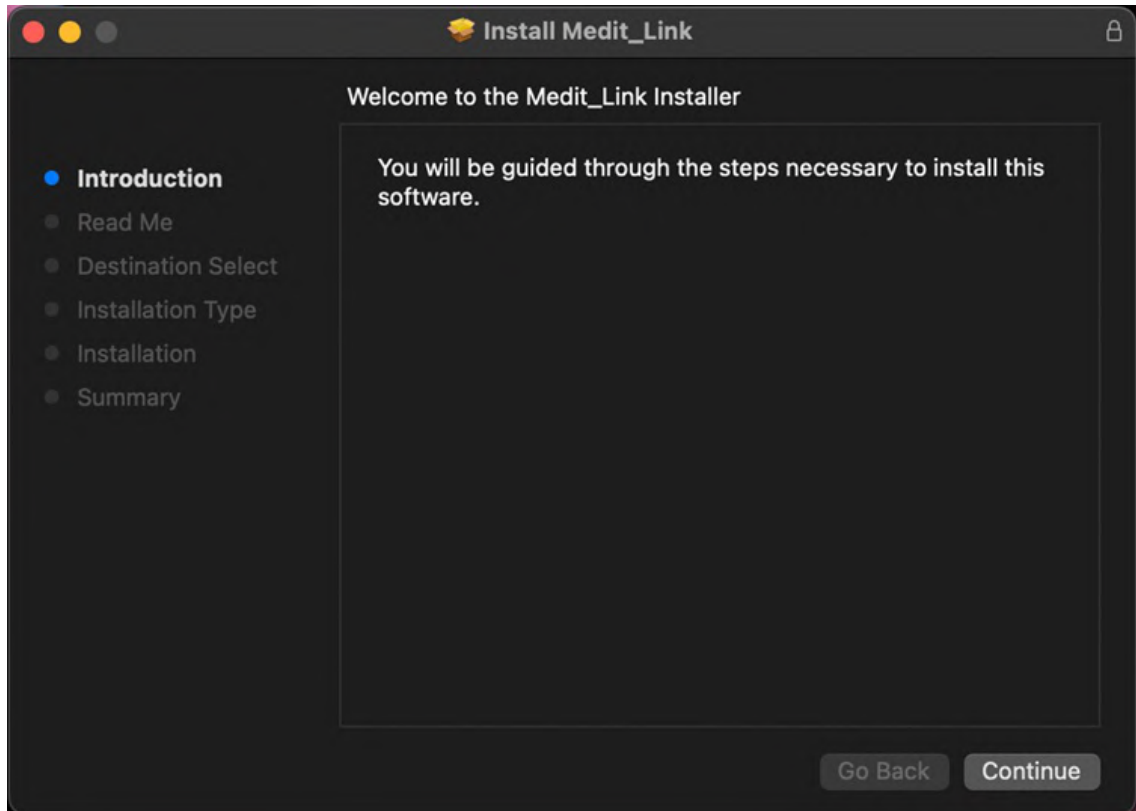


2. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij "Dalej".

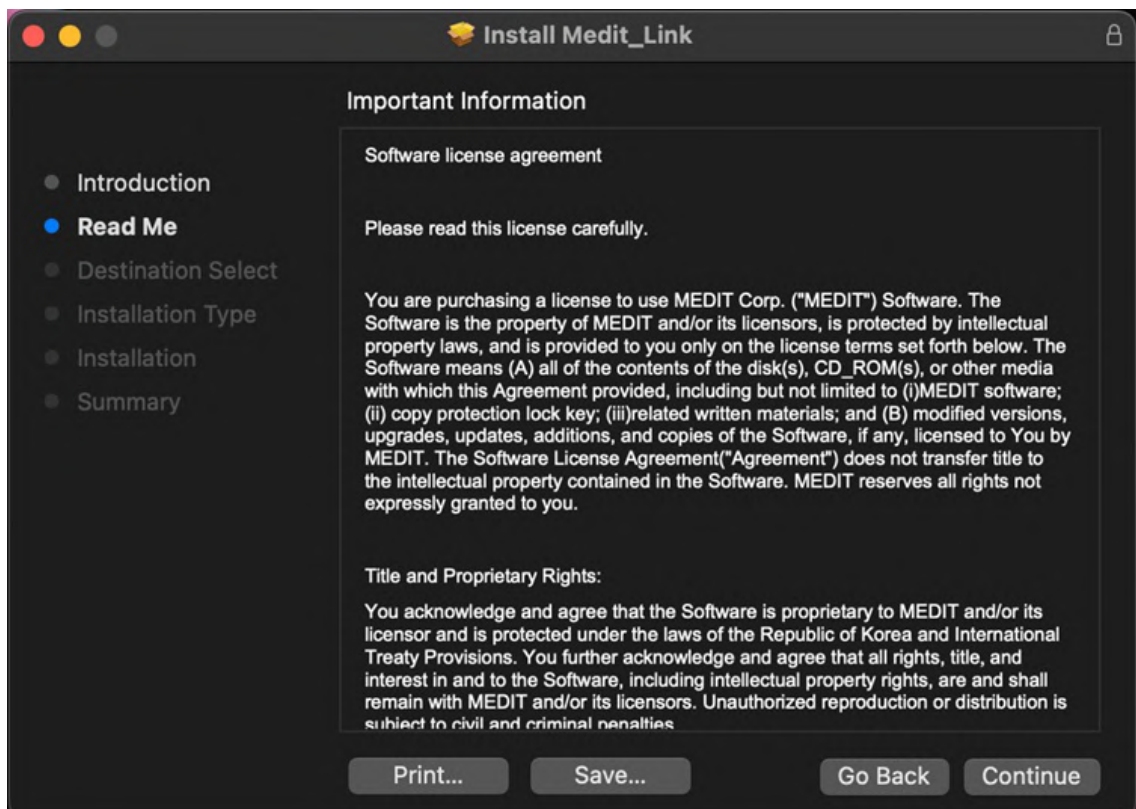

3. Wybierz dysk do instalacji i kliknij "Dalej".

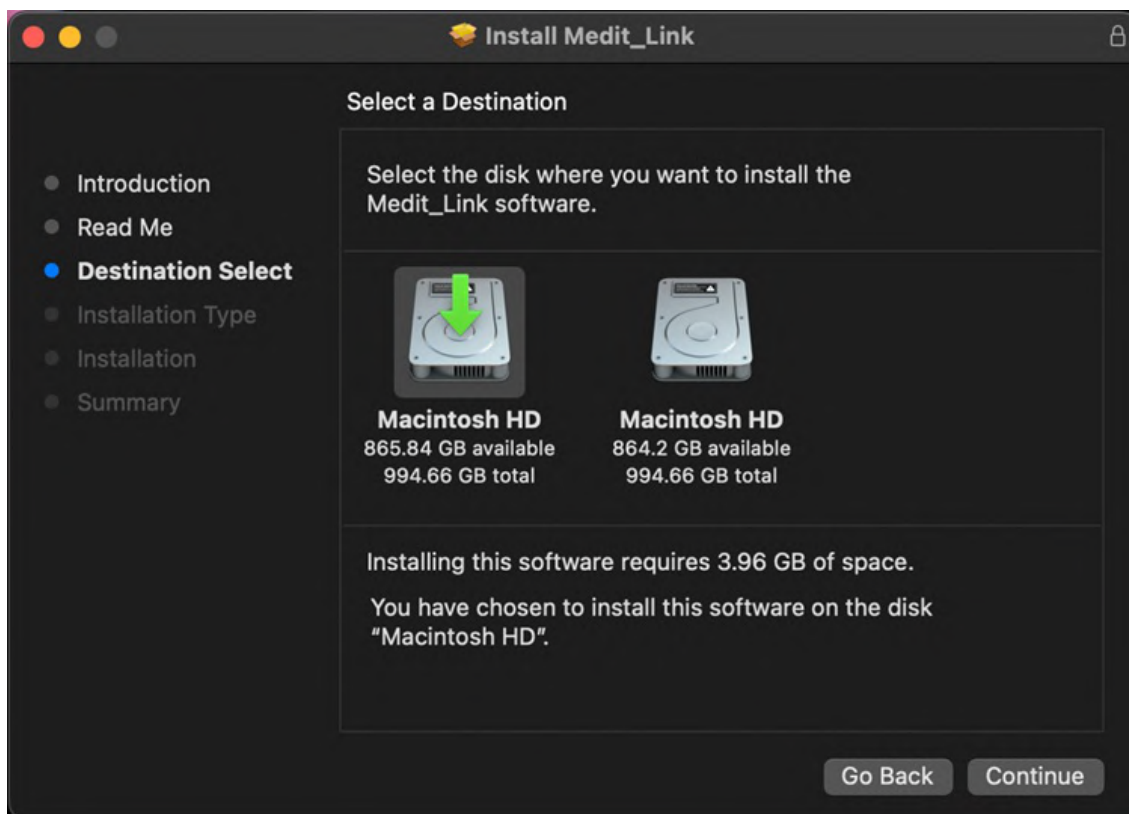


4. Kliknij "Zmień lokalizację instalacji...", aby zmienić miejsce docelowe instalacji.

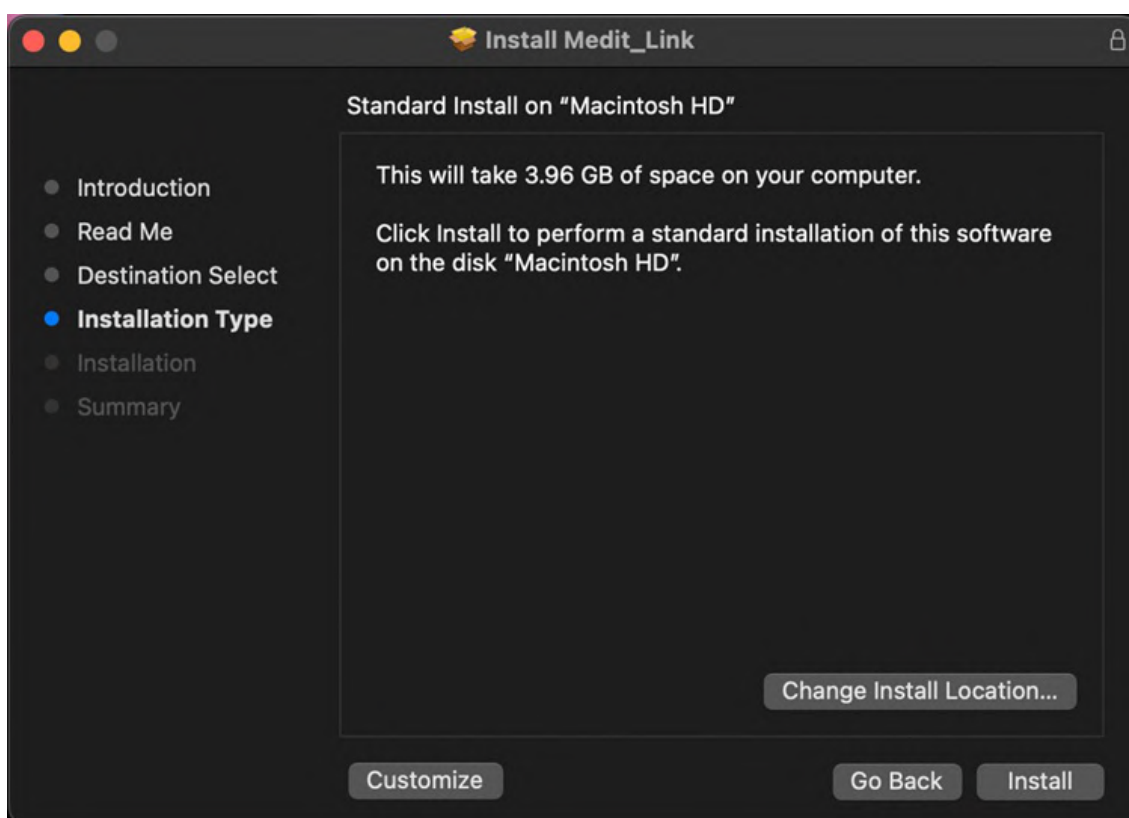


5. Kliknij "Instaluj" i wpisz swoje hasło do komputera Mac, aby zezwolić na instalację, jeśli będzie to wymagane.



6. Poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona.

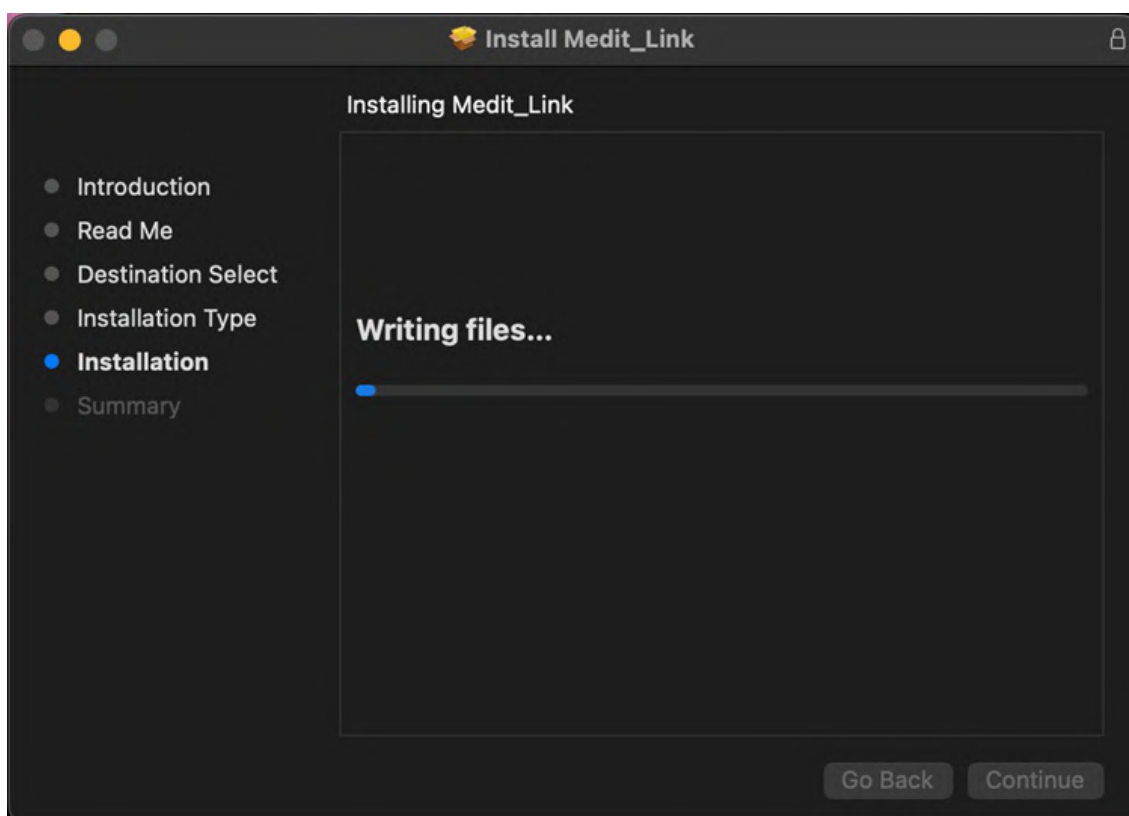


7. Kliknij "Zamknij", aby wyjść z okna instalacji.

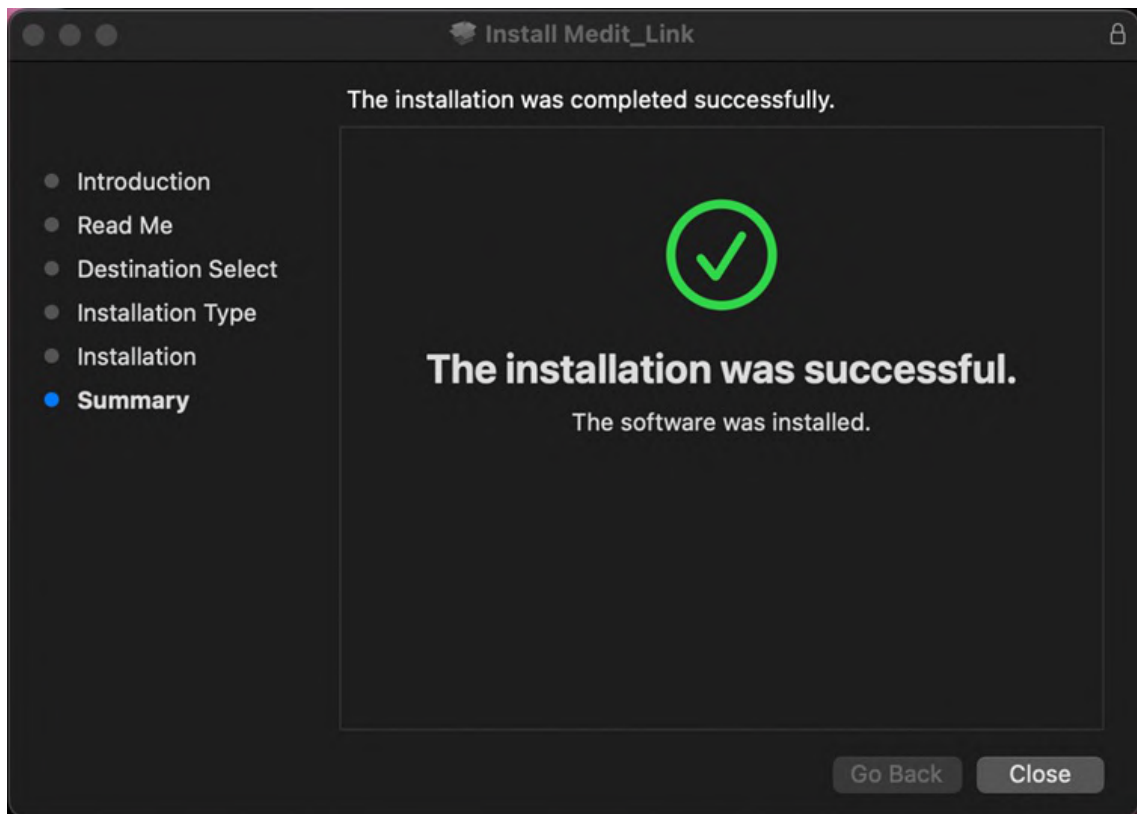

Zarejestruj się i Zaloguj

Strona internetowa Medit Link

Zarejestruj się w serwisie Medit Link na stronie www.meditlink.com.

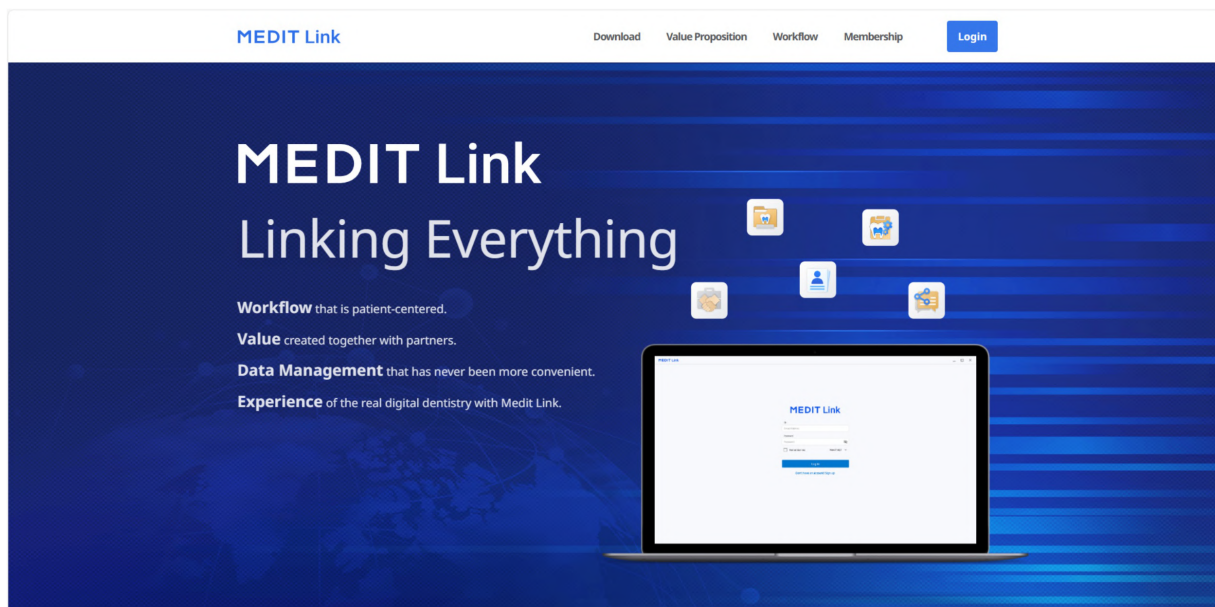

Uwaga

Zarejestruj się w Medit Link China na stronie www.meditlink.cn.

Zarejestruj się

Aby korzystać z usługi Medit Link, należy założyć konto. Po założeniu konta jako klinika lub laboratorium można korzystać z funkcji dostępnych w Medit Link.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z następujących czterech typów kont, aby zarejestrować członkostwo i korzystać z serwisu z pełnymi lub ograniczonymi funkcjami i uprawnieniami, w zależności od typu konta.

- Klinika - Administrator
- Klinika - Członek
- Laboratorium - Administrator
- Laboratorium - Członek

Administrator jest zazwyczaj przedstawicielem Twojej organizacji i będzie miał pełny dostęp do wszystkich funkcji i usług Medit Link. Z kolei konto członkowskie ma ograniczony dostęp.

Aby zarejestrować członkostwo, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się" na stronie logowania.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Po przeczytaniu zamieszczonych opisów należy kliknąć przycisk "Zarejestruj" dla wybranego typu konta.

Create Your Medit Link Account



Clinic



Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ [Scan/Order/Manage orders](#)
- ✓ [Manage members](#)

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ [Scan/Manage ordered cases](#)
- ✓ [Manage members](#)

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ [Scan/Order/Manage orders](#)

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ [Scan/Manage ordered cases](#)

Register

3. Pojawi się następujący formularz rejestracyjny.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

View

Back

Register

4. Wprowadź nazwę kliniki lub laboratorium, a następnie, w zależności od pożądanego typu konta, wykonaj następujące czynności:
 - Jeśli rejestrujesz się jako administrator, kliknij "Sprawdź dostępność", aby sprawdzić, czy wprowadzona nazwa jest dostępna.
 - Jeśli rejestrujesz się jako członek, kliknij "Szukaj". Administrator musi zarejestrować Twoją organizację zanim się zarejestrujesz.
5. Wypełnij pozostałą część formularza rejestracyjnego i kliknij "Zarejestruj".

Uwaga

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rejestracji, będziesz otrzymywać pomocne informacje o produkcie i usłudze od Medit.

6. Zostanie do Ciebie wysłany e-mail weryfikacyjny.
7. Aby zakończyć proces rejestracji, zweryfikuj swój adres e-mail za pomocą otrzymanego linku.

Logowanie i strona powitalna

1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło na stronie logowania i kliknij "Zaloguj się".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Poniższe okno dialogowe pojawi się, jeśli nie wypełniłeś informacji o swojej firmie.

Welcome, stage-test-wh!

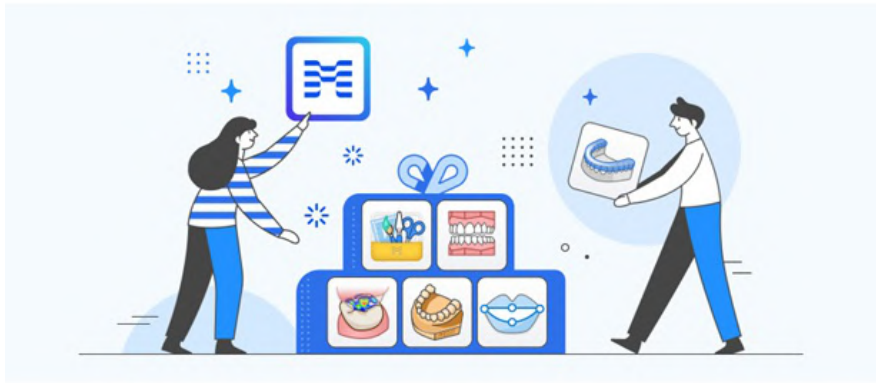

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

Uwaga


Aby korzystać z usług Medit Link, informacje o klinice lub laboratorium należy wprowadzić przy użyciu konta administratora.

3. Kliknij przycisk "Przejdź do mojej kliniki" lub "Przejdź do mojego laboratorium" i wprowadź informacje o klinice lub laboratorium, w tym nazwę firmy, zdjęcia okładki/logo, oferowane usługi, adres biura, numer biura itp.
4. Informacje wprowadzone na stronie powitalnej mogą być edytowane w dowolnym momencie w zakładce My Info > Moja klinika lub Moje laboratorium w Medit Link Web.

Dashboard

Omówienie pulpitu Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link na wizualizowanych wykresach - zarówno w aplikacji Medit Link, jak i w Internecie.

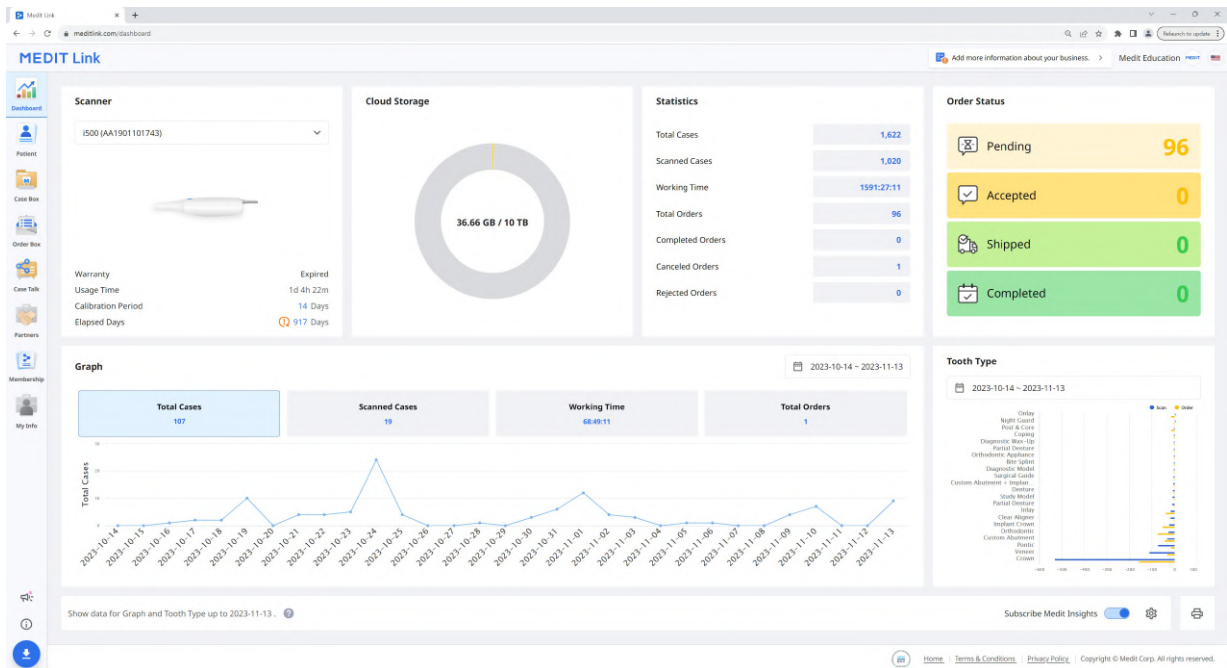

Wykresy i tabele na dashboard pokazują statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link.

Skaner	Podaje informacje o aktywnych skanerach, w tym gwarancję, czas użytkowania skanera, interwał kalibracji i czas, jaki upłynął od kalibracji.
Przechowywanie w chmurze	Wyświetlanie całkowitej pojemności chmury i ilości w użyciu.
Statystyki	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu pracy.
Status zamówienia	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu zamówienia.
Wykres	Wykres informacji o pracy według okresu.
Typ zęba	Udostępnianie statystyk dotyczących liczby skanów i zleceń według informacji o leczeniu.


Medit Insights

Medit Insights to usługa raportowania, która pomaga analizować statystyki użytkowania.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Medit Insights

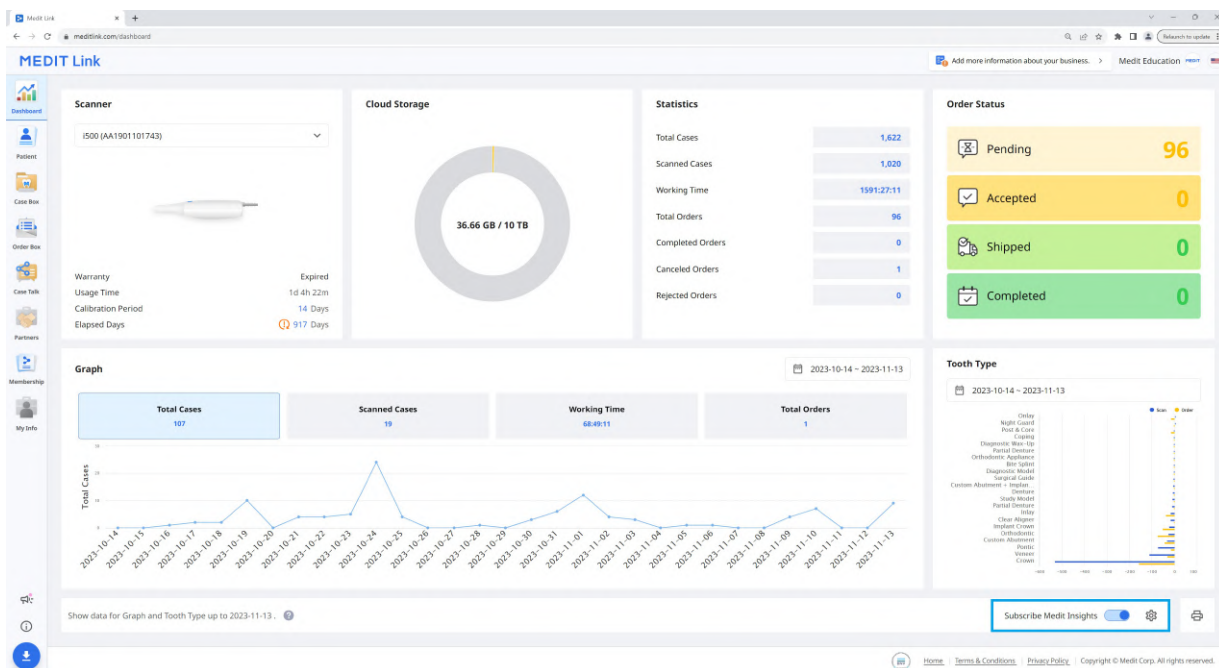

Subskrybuj Medit Insights

Możesz otrzymać maila z raportem drugiego dnia każdego miesiąca. Nie jest wymagany żaden dodatkowy proces rejestracji. Wystarczy włączyć opcję "Subskrybuj Medit Insights".

Jeśli nie korzystasz z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta Medit Link, możesz ustawić inny adres e-mail do otrzymywania Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Drugiego dnia każdego miesiąca otrzymasz wiadomość e-mail ze statystykami, jak pokazano poniżej.

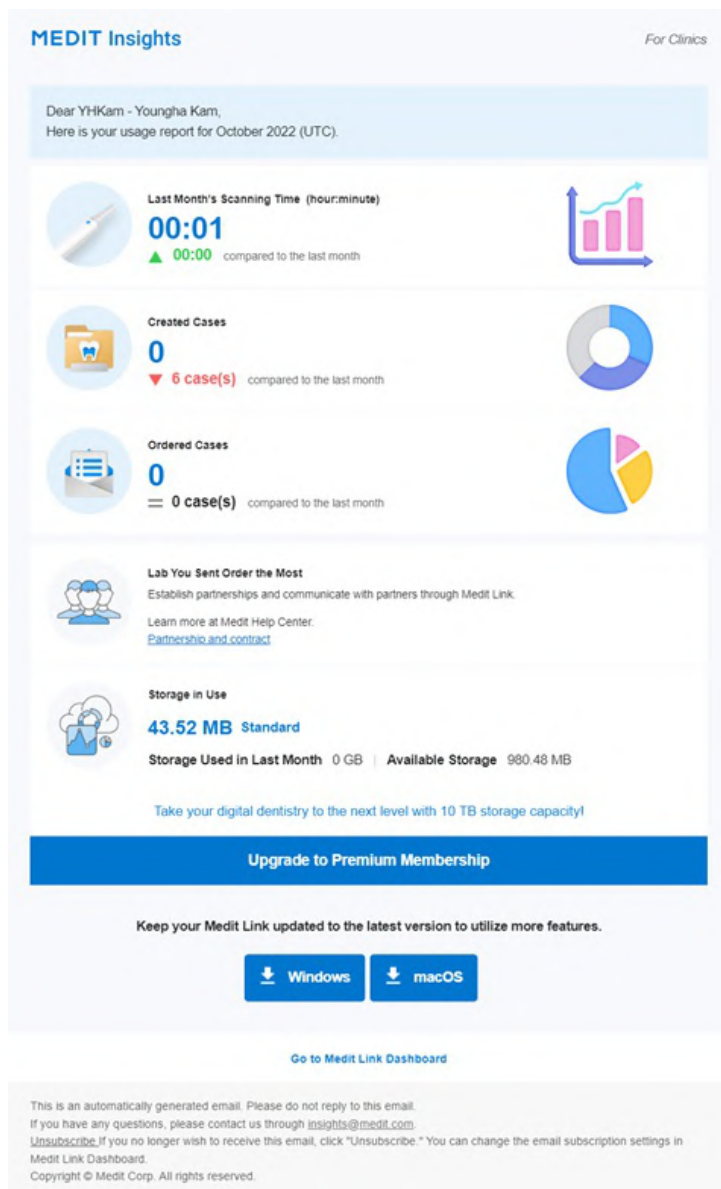

Banner	Medit dostarcza tutaj przydatne wskazówki i informacje. * Jeśli nie chcesz widzieć banera, usuń zaznaczenie pola wyboru Umowa ws. marketingu i promocji w Moje informacje> Moje konto.
Informacje statystyczne	Wyświetlane są informacje statystyczne, takie jak czas skanowania, utworzone przypadki, najczęściej zamawiane laboratorium itp.
Pobieranie Medit Link	Przycisk udostępnia link do pobrania Medit Link.
Dashboard	Wszystkie informacje statystyczne są oparte na informacjach z pulpitu Dashboard. Więcej szczegółów możesz zobaczyć w Dashboard.


Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights

Wyłącz "Subskrybuj Medit Insights" w Dashboard lub kliknij "Zrezygnuj z subskrypcji" w otrzymanej wiadomości e-mail.

Patient

Możesz zarządzać przypadkami na podstawie imienia i nazwiska oraz ID pacjenta.


Wszyscy pacjenci zarejestrowani za pośrednictwem aplikacji Medit Link są wyświetlani na liście, co ułatwia zarządzanie pacjentami i ich przypadkami.

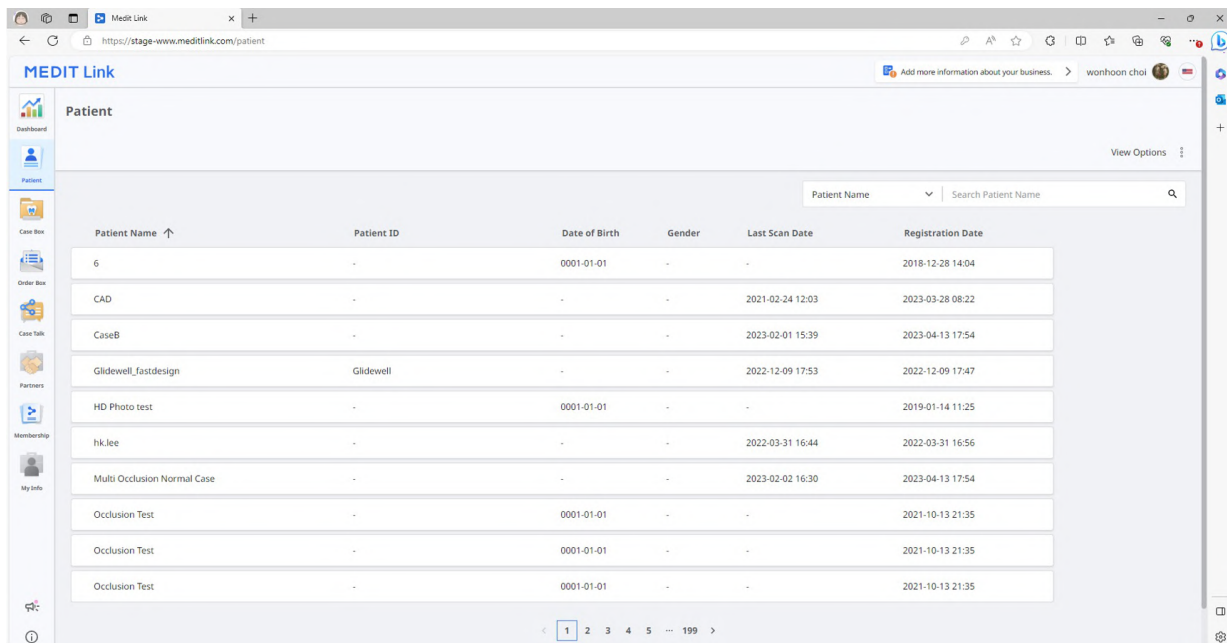

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Szukaj pacjenta

1. Wybierz kryteria wyszukiwania między imieniem i nazwiskiem pacjenta a ID pacjenta z menu rozwijanego w prawym górnym rogu listy pacjentów.

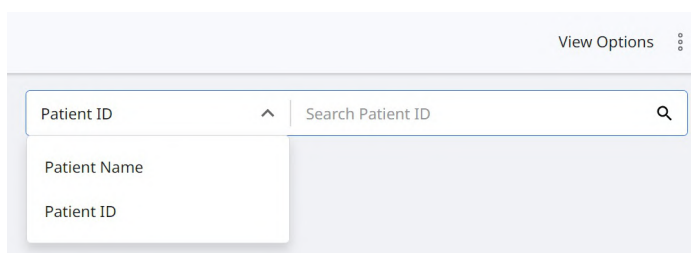

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Wprowadź imię i nazwisko lub ID pacjenta, aby wyszukać zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.
3. Tylko pacjenci z wprowadzonym imieniem i nazwiskiem lub ID pacjenta są wyświetlani na liście.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinika) lub Work Box (Laboratorium) pokazuje wszystkie przypadki, które użytkownik utworzył w aplikacji Medit Link. Pliki możesz oglądać za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu.

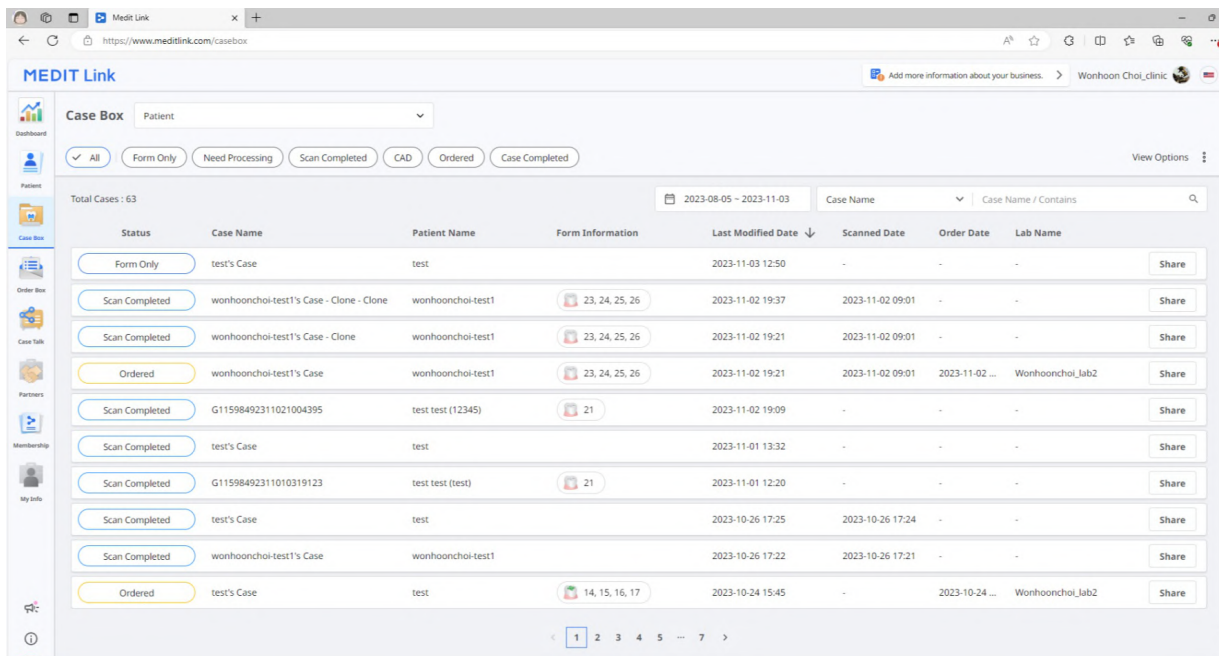


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a search bar with 'Patient' selected. Below it are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A date range filter shows '2023-08-05 - 2023-11-03'. A table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data. A sidebar on the left shows navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Filtrowanie przypadków


Filtruj według pacjenta

Możesz filtrować przypadki według pacjentów. Jest to przydatne kiedy szukasz przypadków dla konkretnych pacjentów.

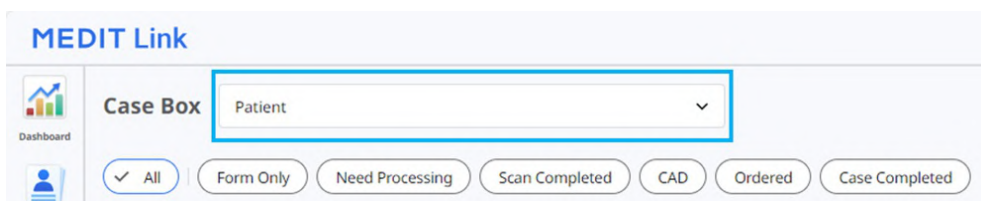

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' dropdown menu open. The dropdown list shows a search for 'test' and a list of results including 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom of the list.

1. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta w polu wyszukiwania.

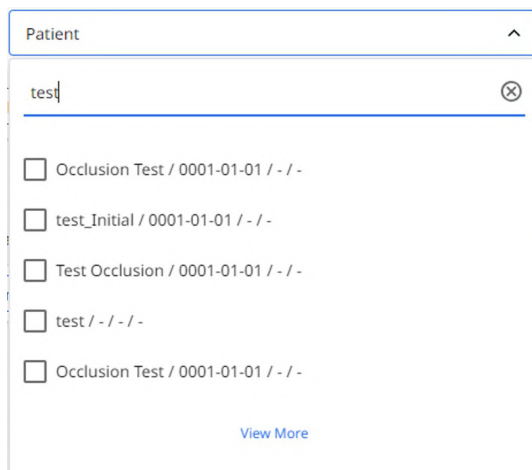

The screenshot shows the patient search dropdown menu with the search results. The dropdown list shows a search for 'test' and a list of results including 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom of the list.

2. Wybierz pacjenta z listy wyników wyszukiwania.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

- Na liście wyświetlane są tylko przypadki wybranych pacjentów, co ułatwia znalezienie przypadków, z którymi chcesz pracować.

MEDIT Link
Add more information about your business.
Woonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

Total Cases: 63
2023-08-05 - 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7

Filtrowanie według statusu

Możesz filtrować przypadki na podstawie ich statusu.

All
☒ Form Only
Need Processing
☒ Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

- Użytkownik może kliknąć status, który chce zobaczyć. Przeglądarka wyświetli tylko przypadki z wybranym statusem.
- Użytkownik może wybrać wiele statusów jednocześnie.

W zależności od typu konta dostępne są następujące typy statusu:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratorium)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrowanie według czasu trwania

Możesz filtrować i wyświetlać przypadki, które były ostatnio modyfikowane w ustalonym okresie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Wybrać przedział.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane z wczorajszą datą.
- Ostatnie 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 90 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ten miesiąc: Pokaż przypadki z tego miesiąca.
- Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki z poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Filtruj według wyszukiwania

Możesz wykorzystać możliwości wyszukiwania, aby łatwo i szybko wyszukać potrzebne informacje.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

🔍

W zależności od typu konta dostępne są następujące opcje wyszukiwania:

Case Box (Klinika)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium
Work Box (Laboratorium)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia

Szczegóły przypadku

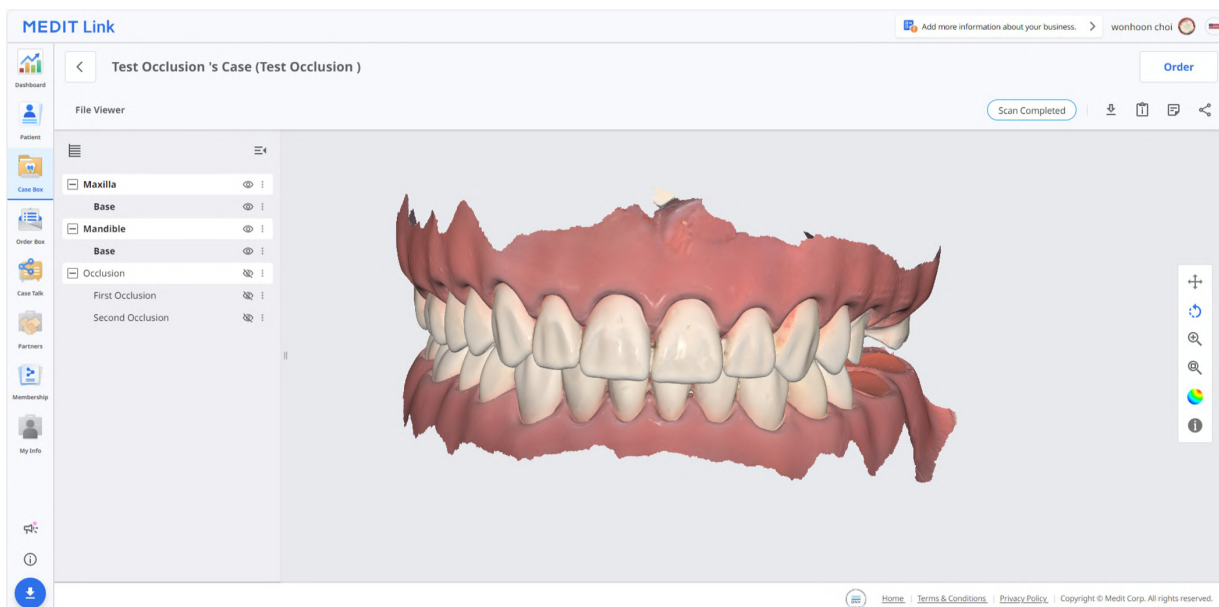

Następujące narzędzia do zarządzania przypadkami są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokaż status przypadku.
	Przejdź do Order Box/In Box	Zapewnij skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Pobierz	Pobierz pliki z przypadku na lokalny komputer stacjonarny.
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki i Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów.

Order Box/In Box

Order Box (Clinic) lub In Box (Lab) pokazuje zamówione przypadki w aplikacji Medit Link.

Szczegóły zamówienia

The screenshot shows the 'Order Box' interface in the Medit Link application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Displays the case name 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' and a 'Cancel Order' button.
- Order Details:** A form containing fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-20 PM 02:08), Order Date (2023-04-27), Requested Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15), and Expected Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15).
- Order List:** A table showing the items ordered.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- 1 Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
- 2 Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
- 3 Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików
- 4 Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
- 5 Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
- 6 Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.


Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak identyfikator zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom wskazanym przez Ciebie, każdemu kto posiada udostępniony link lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez "Case Talk" w Medit Link App i Medit Link Web.

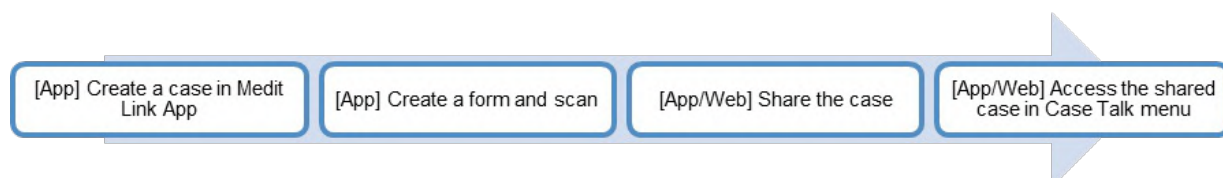


Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.


Tworzenie Case Talk

Możesz utworzyć link udostępniający do przypadku, który został utworzony w Case Box/Work Box.

1. Znajdź przypadek, który chcesz udostępnić i kliknij przycisk "Udostępnij" po prawej stronie.

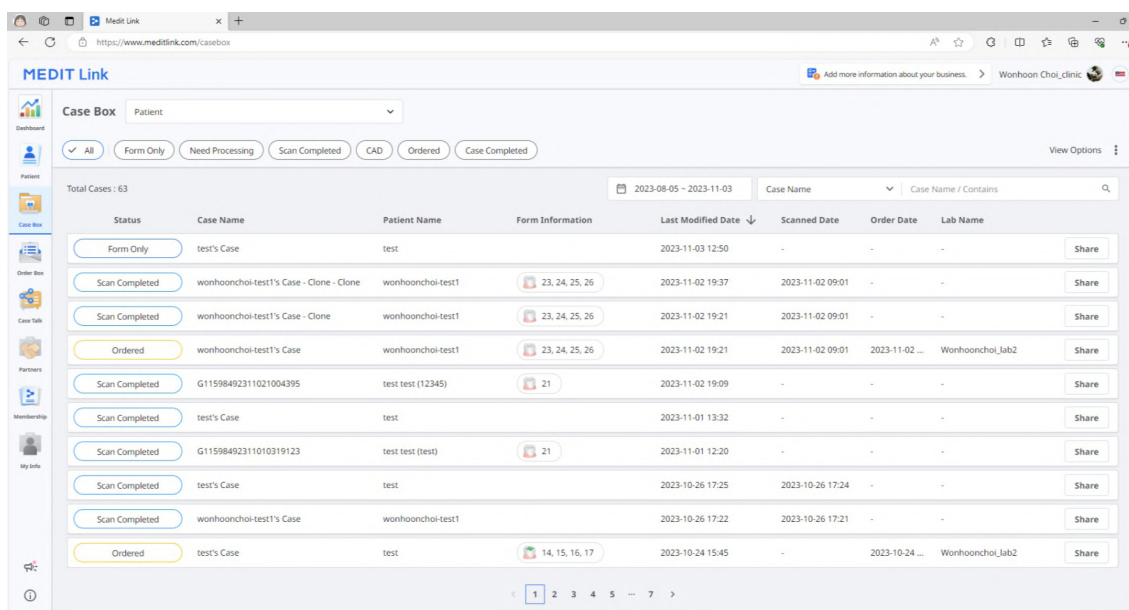

2. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.

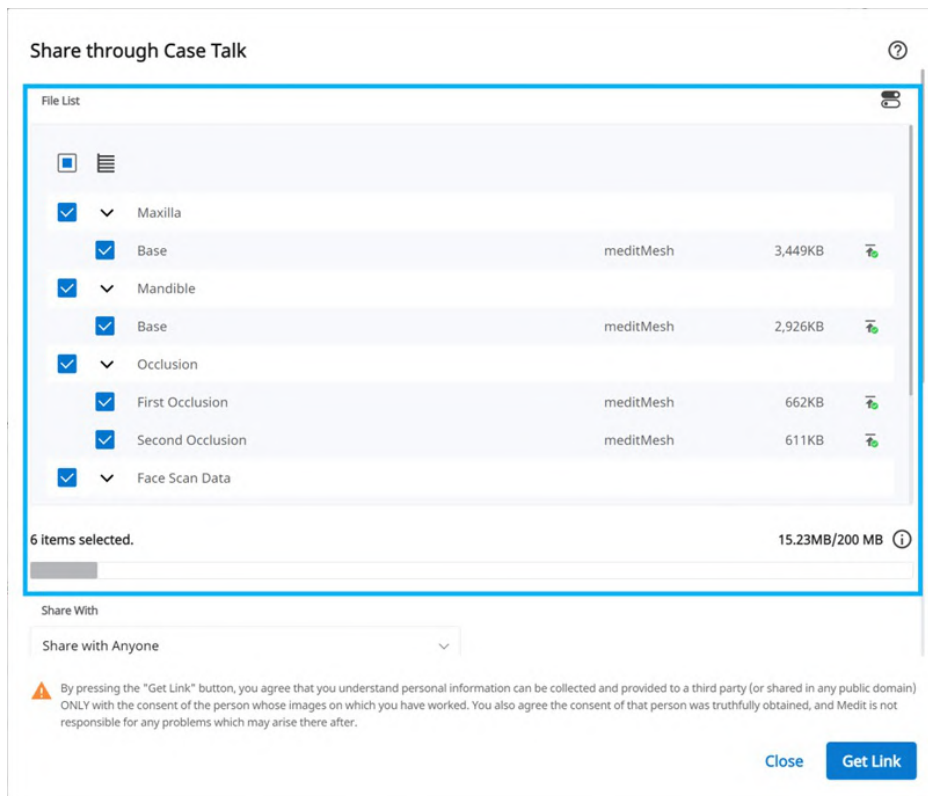

3. Ustaw typ uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania.
4. Kliknij "Uzyskaj link", aby utworzyć link udostępniający.

Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via

PIN Code

☐ PIN Code
Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close
Get Link

Udostępni dla	- Udostępni wszystkim Tworzy link udostępniający. Możesz udostępnić pliki każdemu. - Udostępni wybranym osobom Tworzy i wysyła link udostępniający do określonych osób.
Udostępni za pośrednictwem	Jeśli wybierzesz opcję "Udostępni wybranym osobom", możesz udostępnić link wybranym osobom na różne sposoby. - Adres e-mail - SMS - Partnerzy
Data ważności	Ustaw datę ważności linku. Po wygaśnięciu linku osoby, którym go udostępniłeś, nie będą miały już dostępu do plików. Możesz przedłużyć okres ważności do 90 dni od dzisiaj.
Kod PIN	Ustaw 6-cyfrowy kod dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Udostępni imię i nazwisko pacjenta	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie osoby posiadające link będą widziały imię i nazwisko pacjenta.
Udzielenie pozwolenia na pobieranie	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszyscy użytkownicy posiadający link mogą pobierać pliki.
Zezwalaj na komentarze	- Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł komunikować się za pośrednictwem udostępnionego linku. - Jeśli odznaczysz tę opcję, odbiorca będzie mógł jedynie zobaczyć Twoje komentarze, ale nie będzie mógł dodać własnych.
Uwagi	Możesz zostawić wiadomość w sekcji komentarzy.

33

Szczegóły Case Talk

Można zobaczyć pliki w udostępnionym przypadku. Następujące funkcje są dostępne na stronie szczegółów Case Talk.

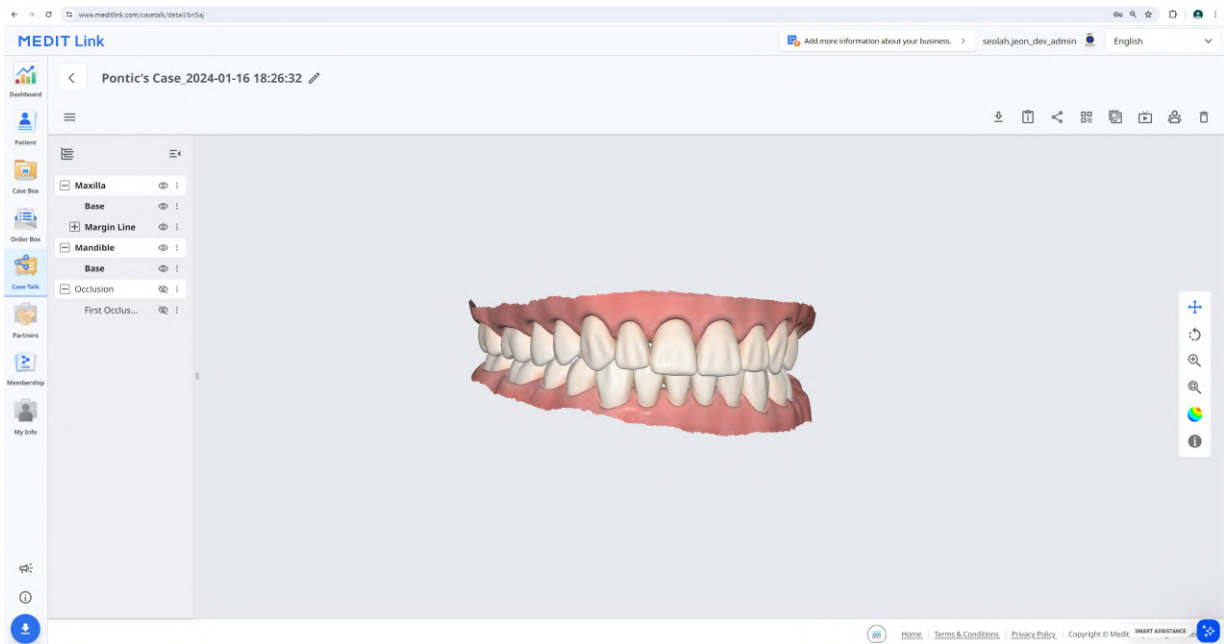

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z przypadku na lokalny komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Udostępnij przypadek za pomocą kodu QR.
	Kopiuje link	Kopiuje udostępniony link do schowka. Skopiowany link pokazuje udostępnione pliki w przeglądarce internetowej.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do udostępnionego łącza.
	Usuń	Usuń udostępniony link. Usunięty link udostępniający nie jest już dostępny.

Uwaga


Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

- Na żywo
- Uczestnicy

Web Viewer

Możesz zobaczyć udostępnione dane poprzez Case Talk w przeglądarce internetowej.

Istnieje możliwość komunikacji z osobami mającymi dostęp do łącza za pomocą adnotacji i komentarzy.

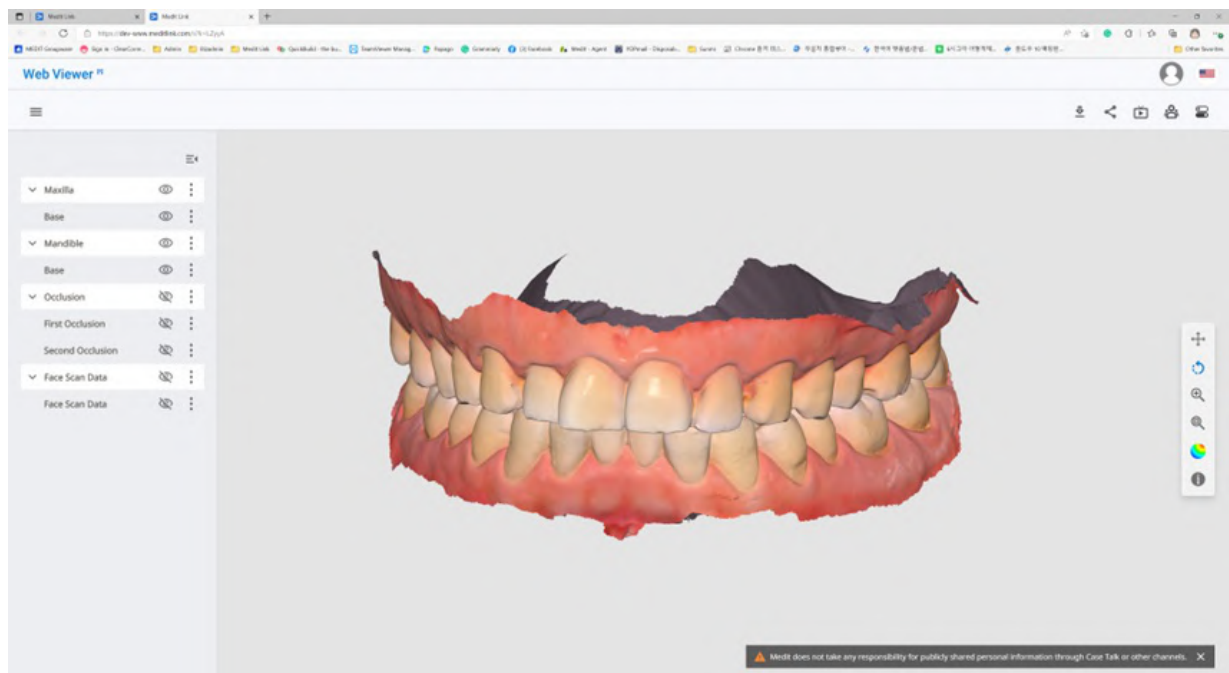

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z tego przypadku na komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Kopiuje udostępniony link do schowka. Skopiowany link pokazuje udostępnione pliki w przeglądarce internetowej.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran połączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy są połączeni z udostępnionym linkiem.
	Oznakowanie zęba	Zmień system znakowania zębów.


Uwaga

Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

- Na żywo
- Uczestnicy

Adnotacja

Możesz dodać adnotacje do określonego miejsca na modelu 3D. Każda osoba posiadająca link może zobaczyć dodane przez Ciebie adnotacje.

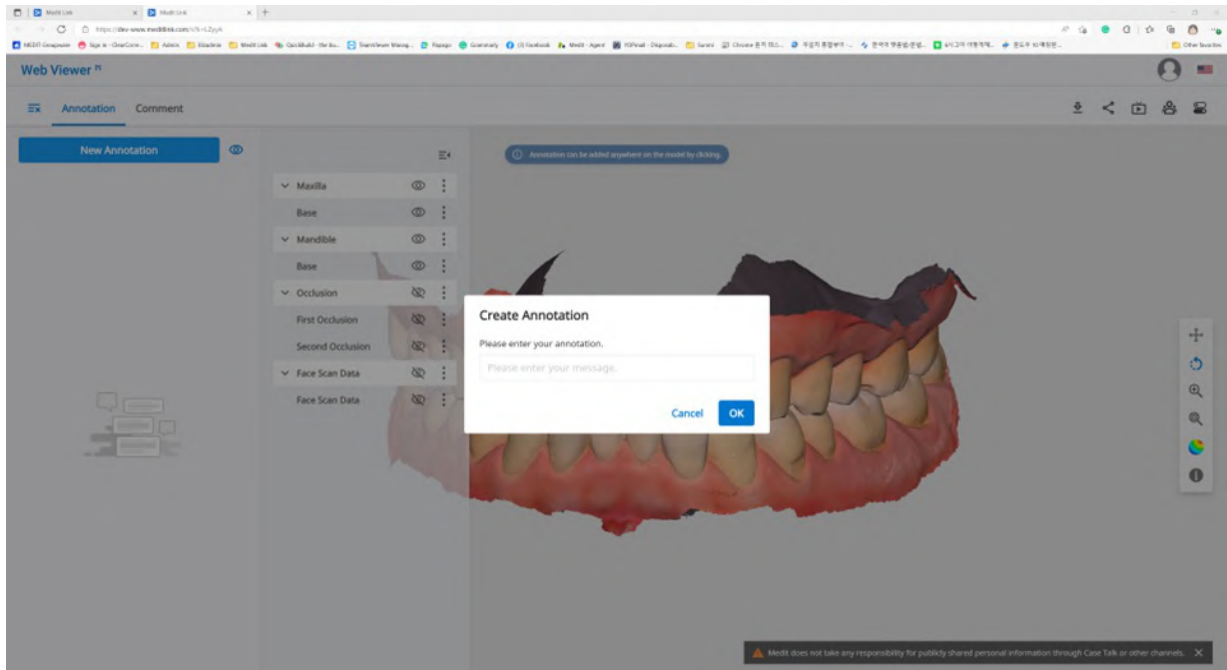

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Adnotacja

1. Znajdź ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz zakładkę "Adnotacja". Użyj przycisku "Nowa adnotacja", aby dodać adnotację w dowolnym miejscu na danych za pomocą kliknięcia.
2. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij "OK", aby ją zapisać.

3. Możesz użyć adnotacji jako prostego kanału komunikacyjnego. Kliknij utworzoną adnotację, aby wprowadzić odpowiedź i naciśnij "Wyślij".

Komentarze

Możesz komunikować się z użytkownikami, którzy mają dostęp do linku poprzez zakładkę "Komentarz" w menu Web Viewer.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Uwagi

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym

Możesz udostępniać swój ekran w czasie rzeczywistym.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Na żywo

1. Kliknij "Na żywo", aby udostępnić ekran przeglądarki internetowej podłączonym użytkownikom.





2. Kliknij "OK", aby rozpocząć udostępnianie ekranu.
3. Inne osoby, które uzyskały dostęp do linku, muszą zaakceptować udostępnienie ekranu.
4. Ekran użytkownika, który zainicjował udostępnianie ekranu, jest wyświetlany synchronicznie z ekranem osoby, która otrzymała wniosek.



Drzewo danych

Wszystkie dane są grupowane i wyświetlane według atrybutów w drzewie danych. Możesz pokazać lub ukryć dane, dostosować nieprzejrzystość i tak dalej.

Kontrola drzewa danych

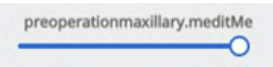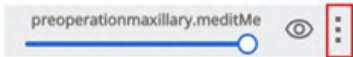Pokaż / Ukryj	Kliknij ikonę "oka", aby pokazać lub ukryć dane z widoku. Kontroluj widoczność danych jako grupy lub pojedynczych plików.
Nieprzejrzystość	Najedź myszką na widoczny element, aby zobaczyć suwak nieprzejrzystości. Wyreguluj suwak, aby zmienić przejrzystość swoich danych. 
Rozszerzone menu	Rozszerzone menu znajduje się po prawej stronie każdego elementu drzewa danych. Zawiera on następujące opcje:  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane poza bieżącymi. • Ukryj: Ukryj bieżące dane.

Kontrola modelu 3D

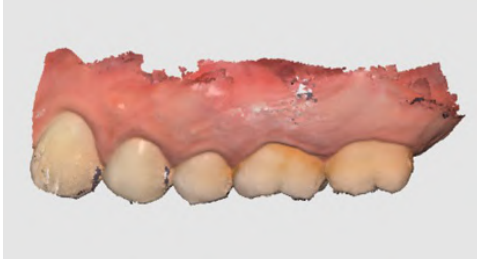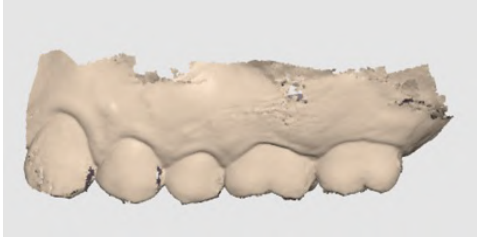	Przesuń	Przenosi model.
	Obróć	Obraca model.
	Przybliż/oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
	Tryb wyświetlania modelu	Tekstura włączona 
		Tekstura wyłączona 

Partners

Możesz wyszukać potencjalnych partnerów, aby wnioskować o partnerstwo i wyświetlić listę obecnych partnerów.




Usługi z wykorzystaniem Google Maps nie są dostępne w Medit Link China.

Wyszukiwanie partnerów


Możesz wyszukać użytkowników Medit Link na podstawie nazwy firmy i/lub adresu.

W wynikach wyszukiwania możesz wysłać wniosek o partnerstwo do firmy, z którą chcesz współpracować.

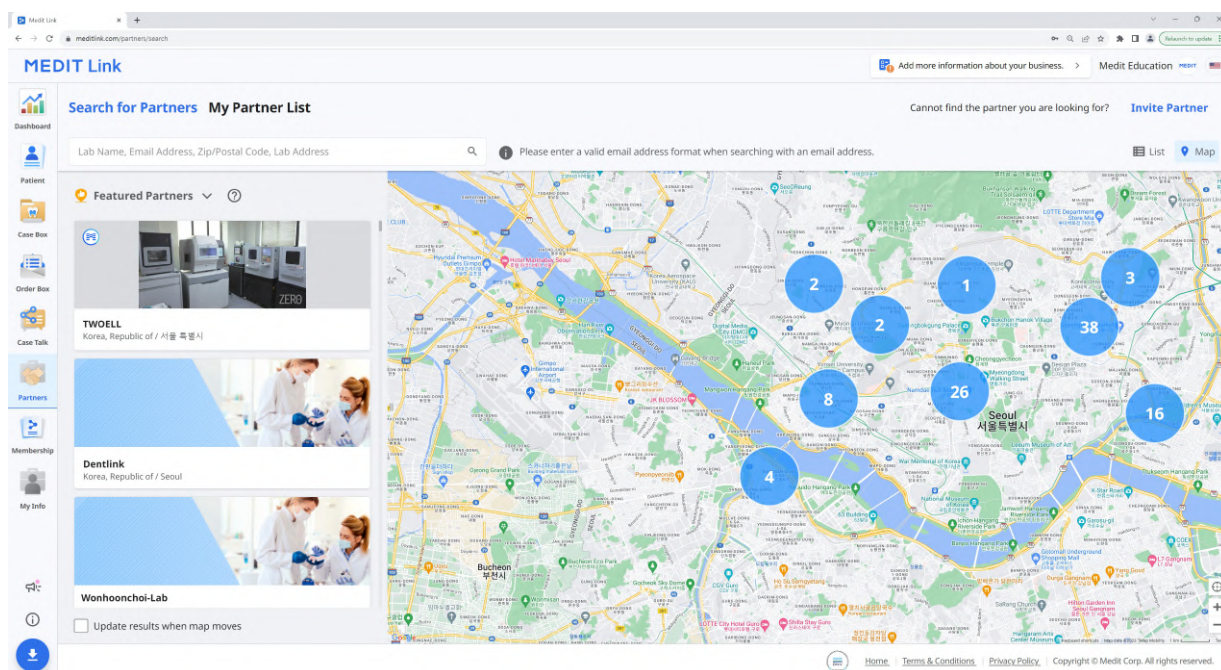

Moja lista partnerów

Możesz przejrzeć swoje bieżące partnerstwa ze wszystkimi istniejącymi firmami partnerskimi na Mojej liście partnerów.

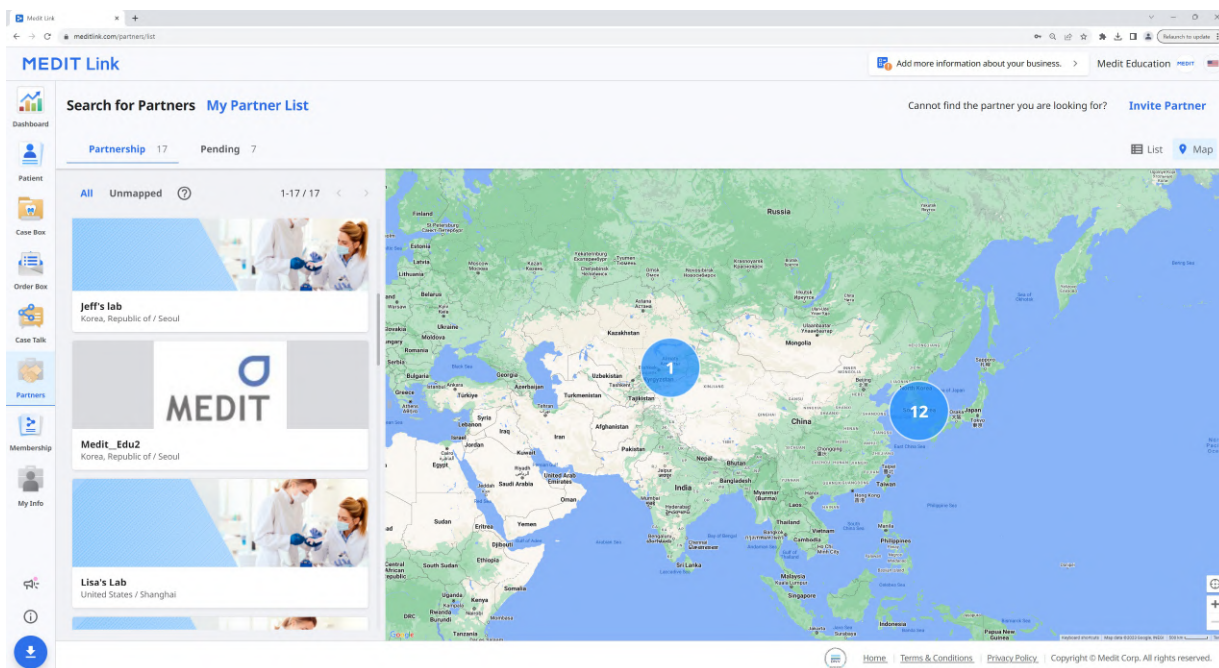

Zaproszenie od partnera

Jeśli masz klinikę lub laboratorium, z którym chcesz współpracować, możesz zaprosić je do Medit Link. Partnerstwo zostanie automatycznie zawiązane po przyjęciu przez nich zaproszenia.

1. Kliknij "Zaproś partnera" w lewym górnym rogu ekranu.
2. Wprowadź adres e-mail firmy, z którą chcesz współpracować i wyślij jej zaproszenie z wnioskiem o partnerstwo.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Po zaakceptowaniu przez zaproszoną organizację zaproszenia i zapisaniu się do Medit Link, partnerstwo zostanie automatycznie nawiązane.


Membership

Członkostwo

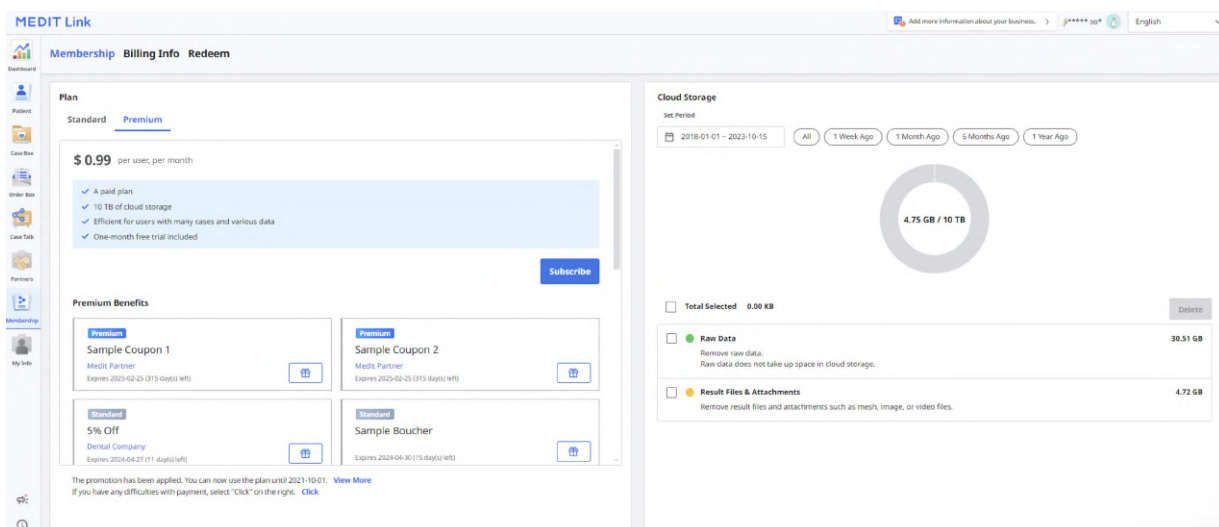

Plan

Możesz zobaczyć, co oferuje każdy plan, w tym kupony rabatowe i vouchery, a także aktualny status subskrypcji. W dowolnym momencie można uaktualnić plan lub anulować subskrypcję.

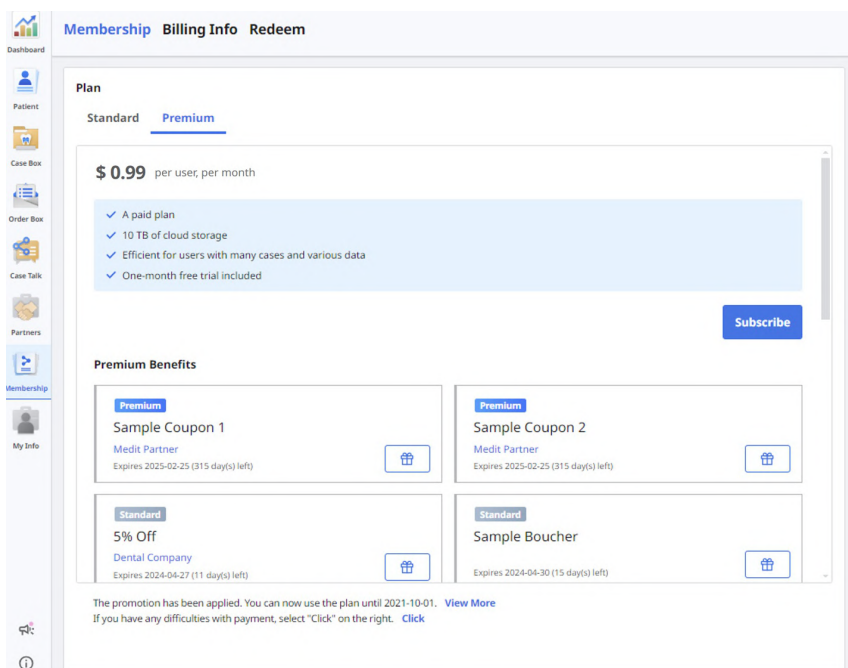

Medit Link oferuje następujące plany członkostwa:

Standard

- Bezpłatny plan standardowy dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników
- 1 GB pamięci w chmurze
- Dla nowych użytkowników

Premium

- Plan płatny
- 10 TB pamięci w chmurze
- Dla użytkowników z wieloma przypadkami i różnymi danymi
- Miesiąc bezpłatnego okresu próbnego


	Standard	Premium
Przechowywanie w chmurze	1 GB	10 TB
Opłata miesięczna	Bez opłat	0,99\$/miesiąc
* Pamięć w chmurze nie oblicza miejsca zajmowanego przez Dane nieprzetworzone.		

Uwaga

Plany członkowskie będą dostępne na Medit Link China. Możesz uzyskać plan Premium za darmo do czasu oficjalnego wydania funkcji.

Przechowywanie w chmurze

W sekcji po prawej stronie możesz zarządzać swoją przestrzenią do przechowywania w chmurze.

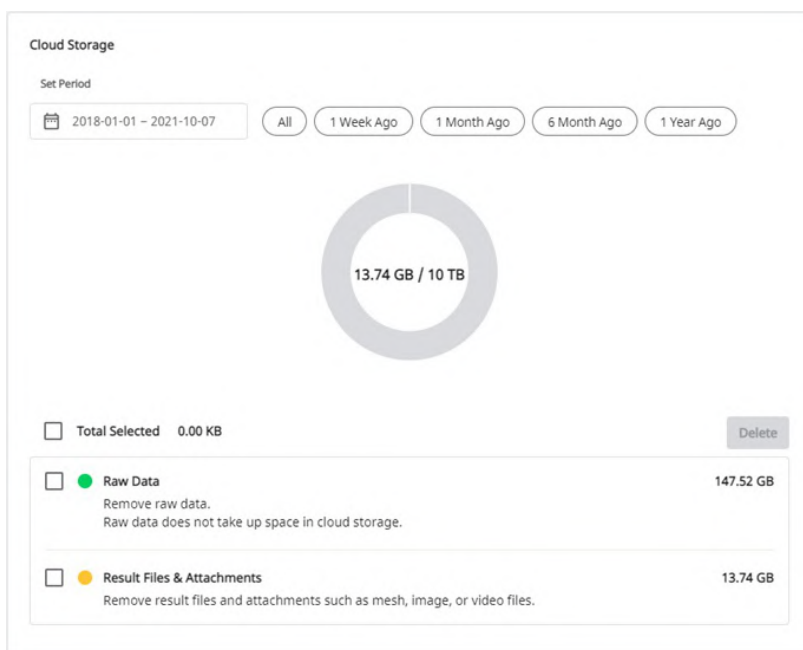


Ustaw okres	Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w tym przedziale czasowym. • Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki. • 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia. • 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia. • 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia. • 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.
Dane nieprzetworzone	Dane nieprzetworzone nie zajmują miejsca przy przechowywaniu w chmurze, więc nie będzie ich na wykresie pi-chart. Ale możesz zarządzać danymi nieprzetworzonymi z tego miejsca w razie potrzeby, np. Usunąć je, aby chronić prywatne informacje pacjenta.
Wynik & Załącznik	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Usuń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce.

Subskrybuj


Jeśli obecnie korzystasz z planu Standard lub Premium z kodem do realizacji, możesz subskrybować plan Premium.

Płatność jest realizowana za pośrednictwem usługi Stripe (www.stripe.com).


1. Przejdź do opcji Członkostwo > Plan > Premium i kliknij przycisk "Subskrybuj".

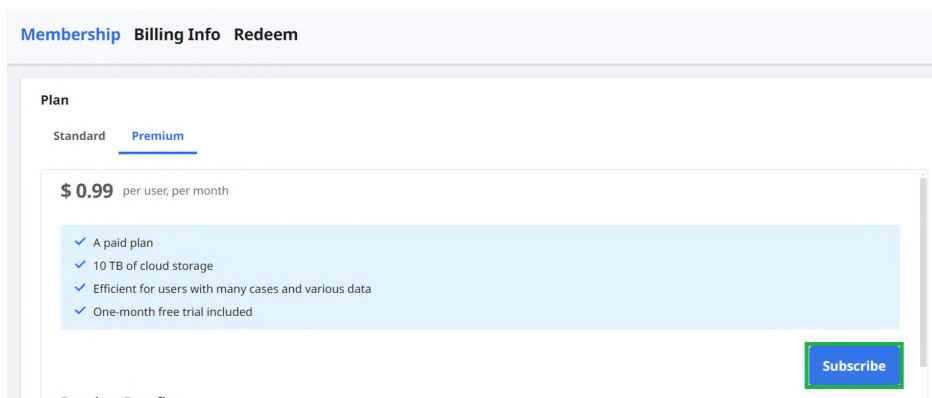

2. Sprawdź opis planu Premium i ponownie kliknij "Subskrybuj".

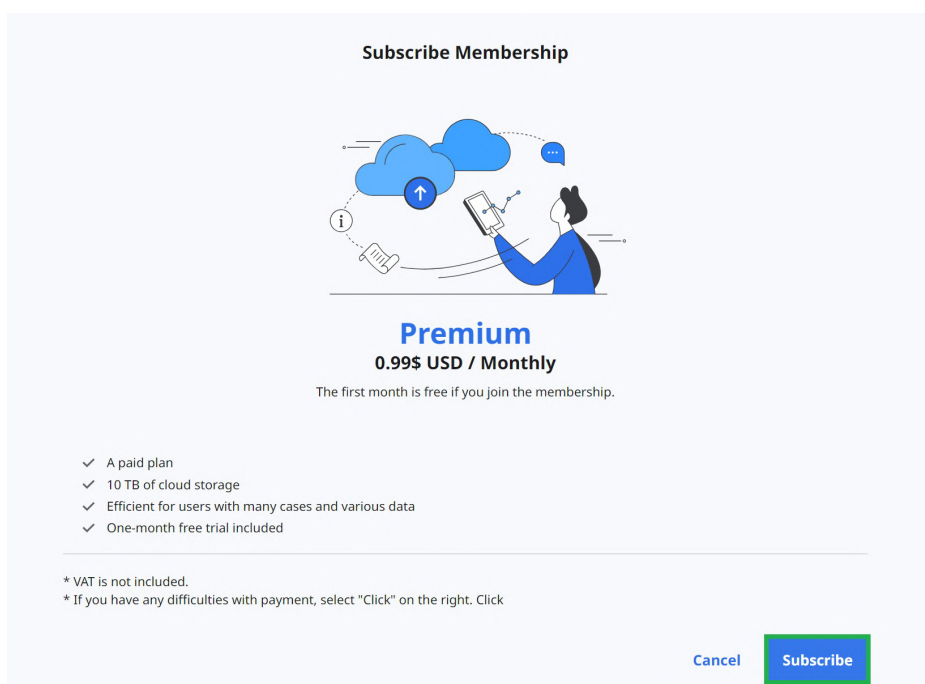

3. Sprawdź cenę i warunki oraz wprowadź informacje niezbędne do dokonania płatności. Następnie kliknij "Subskrybuj".

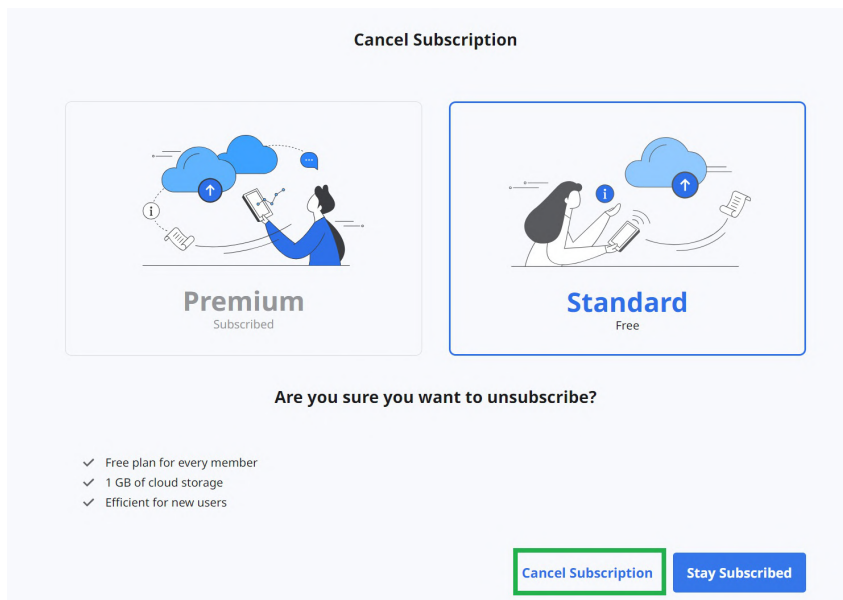

3. Aby potwierdzić, że chcesz anulować subskrypcję, kliknij ponownie "Anuluj subskrypcję" w nowym oknie wyskakującym.


Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Twoja subskrypcja została anulowana.
5. Twój plan zostanie zmieniony na Standard od następnego dnia płatności, a przestrzeń dyskowa w chmurze zostanie ograniczona do 1 GB. Jeśli pojemność magazynu w chmurze zostanie przekroczona, pliki nie będą tworzone w kopii zapasowej, a funkcje zamawiania i udostępniania nie będą dostępne.

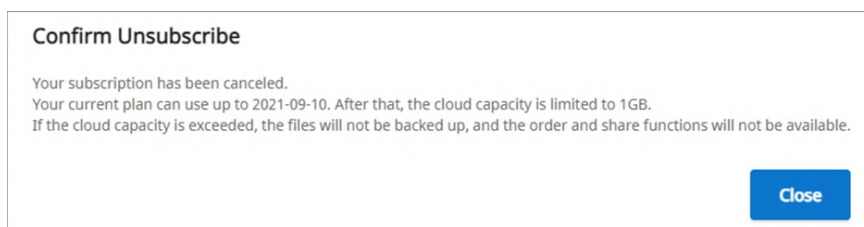

Informacje o rozliczeniach

Możesz sprawdzić historię płatności za subskrypcje członkowskie, w tym fakturę za każdą płatność. Możesz również dodać lub zmienić metodę płatności, która będzie stosowana począwszy od następnej zaplanowanej płatności.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab selected. It contains two main sections: 'My Plan and Billing Information' and 'Billing History'.

My Plan and Billing Information:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Billing History:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Jak dodać metodę płatności

1. Kliknij "Edytuj metodę płatności".

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangle.

2. Kliknij "Dodaj metodę płatności".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Wprowadź wymagane informacje i kliknij "Dodaj".

Add payment method

Card information

 Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Nowo dodany sposób płatności zostanie ustawiony jako domyślny i użyty przy następnej płatności.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Jak zmienić metodę płatności

1. Kliknij ikonę rozwiniętego menu obok metody płatności, którą chcesz zmienić w oknie dialogowym rozliczeń.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	✕
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Kliknij "Ustaw jako domyślną", aby ustawić wybraną kartę jako domyślną metodę płatności.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	✕
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

Make default

Delete


BILLING INFORMATION

Zrealizuj


Zarejestruj kod wykupu podany w ramach promocji. Możesz użyć członkostwa Premium razem z kodem wykupu.

Zarejestruj Kod Realizacji

1. Wprowadź kod realizacji i kliknij "Zarejestruj".

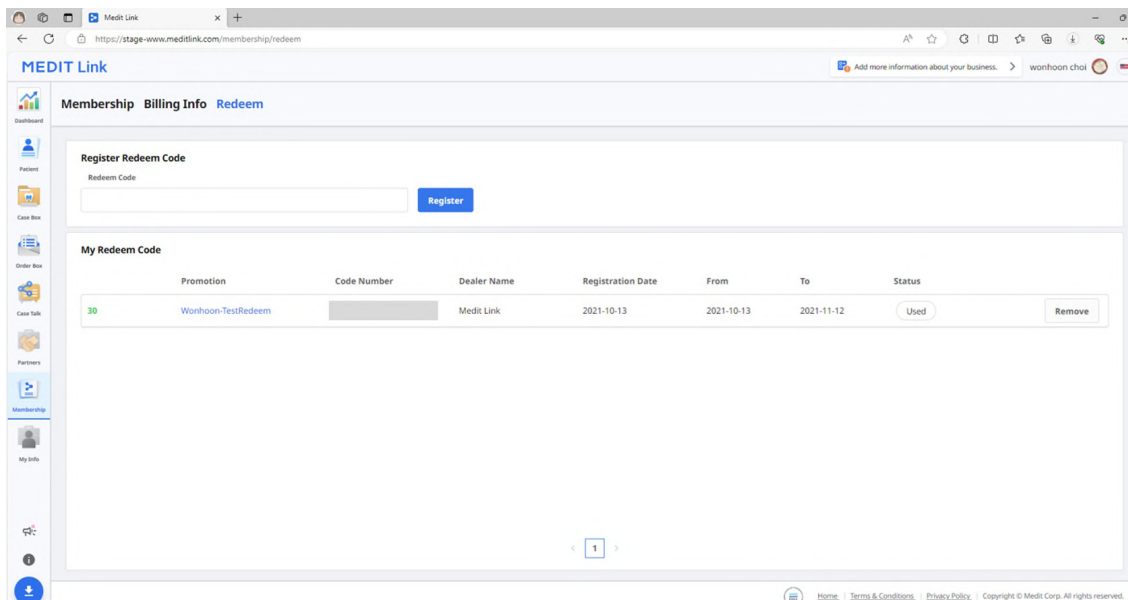

2. Przeczytaj zawiadomienie i wybierz "Zarejestruj" lub "Zastosuj" w wyskakującym oknie dialogowym.
 - **Zarejestruj:** Zarejestruj kod realizacji. Możesz aktywować i wykorzystać kod realizacji później po rejestracji.
 - **Zastosuj:** Zarejestruj i aktywuj kod realizacji. Rabat promocyjny obowiązuje natychmiast.

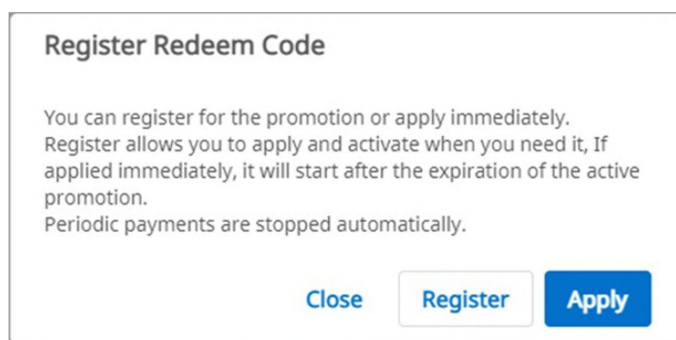

Aktywuj Kod realizacji

Możesz zarejestrować wiele kodów realizacji, ale musisz aktywować ten, który chcesz wykorzystać.

1. Kliknij przycisk "Aktywuj" obok kodu, którego chcesz użyć.
 - Jeśli nie ma kodu o statusie "Activated", wybrany kod zostanie zastosowany natychmiast.
 - Jeśli istnieje już aktywowany kod, nowo wybrany kod zmieni status na "Waiting". Gdy aktualnie aktywowany kod realizacji wygaśnie, nowy kod realizacji w stanie "Waiting" zostanie automatycznie aktywowany.




Uwaga

Tylko jeden kod realizacji może zostać aktywowany i tylko jeden może mieć status "Waiting".

My Info

Moje konto

Możesz przeglądać i edytować informacje podane podczas rejestracji oraz sprawdzać swój status członkostwa.

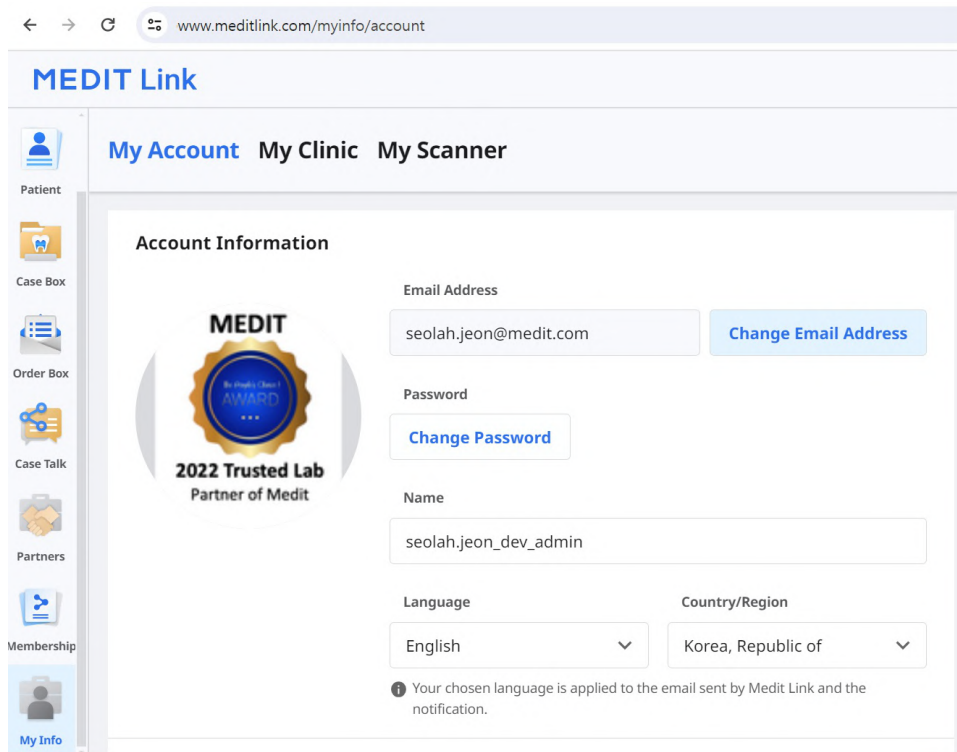

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A sidebar on the left contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info". The main content area is titled "Account Information" and features a "2022 Trusted Lab Partner of MEDIT" badge. The form includes fields for "Email Address" (seolah.jeon@medit.com) with a "Change Email Address" button, "Password" with a "Change Password" button, "Name" (seolah.jeon_dev_admin), "Language" (English), and "Country/Region" (Korea, Republic of). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)

Możesz przeglądać i edytować informacje o swojej klinice lub laboratorium. Ta sekcja jest dostępna tylko dla kont administratorów.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Mój skaner

Możesz sprawdzić informacje o podłączonym urządzeniu dla danego konta.

[Add more information about your business.](#)

[seolah.jeon](#)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ①	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ①	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 49m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

① The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

[Home](#)
[Terms & Conditions](#)
[Privacy Policy](#)

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Pozostałe menu

Powiadomienie & Aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Powiązane strony internetowe

Możesz uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Uzyskaj dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Medit Academy, Medit Academy YouTube i Centrum pomocy Medit.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Pobierz Medit Link App

52

Możesz pobrać z sieci najnowszą wersję instalatora programu. To menu jest pomocne w przypadku utraty instalatora dostarczonego w pakiecie z produktem lub posiadania nieaktualnego instalatora.

 Uwaga

Medit Link aktualizuje się automatycznie, gdy masz połączenie z internetem.

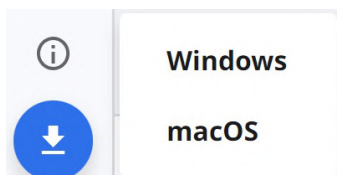

Omówienie

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Pasek tytułowy	Odnieś się do Medit Link App > Pasek tytułowy , aby uzyskać szczegółowe informacje.
2	Menu	Odnieś się do Medit Link App > Menu , aby uzyskać szczegółowe informacje.
3	Narzędzia i funkcje	Odnieś się do Medit Link App > Przeglądarka plików i Medit Link App > Przeglądaj opcje w celu uzyskania szczegółowych informacji.
4	Lista przypadków	Odnieś się do Medit Link App > Filtrowanie i wyszukiwanie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.

Typ konta		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Konta kliniki	Administrator	O	O	O	X	X	O	O	O
	Członek	O	O	O	X	X	O	O * Tylko funkcja przywracania	O
Konta laboratorium	Administrator	X	X	X	O	O	O	O	O
	Członek	X	X	X	O	O	O	O * Tylko funkcja przywracania	O

Pasek tytułowy

Pasek tytułowy zapewnia szybki dostęp do funkcji, takich jak informacje o koncie, powiadomienia, zawiadomienia i aktualizacje, ustawienia i stan sieci.



Moje informacje

Moje informacje zawierają podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak zdjęcie profilowe, nazwa kliniki lub laboratorium, adres e-mail i nazwa użytkownika.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Powiadomienia

Możesz zobaczyć powiadomienia związane z partnerstwami, zamówieniami i procesami roboczymi.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Zaznacz pole, aby pokazywać tylko nieprzeczytane wiadomości. |
| 2 | Kliknij dowolne powiadomienie, aby natychmiast przejść do powiązanego przypadku lub strony internetowej. |

Powiadomienie i aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Ustawienia

Okno dialogowe Ustawienia umożliwia użytkownikom konfigurację programu.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes. **Apply**

Prosimy odnieść się do [Medit Link App > Ustawienia](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień.

Status sieci

Medit Link umożliwia płynne korzystanie ze wszystkich funkcji po podłączeniu do sieci.

Aby ułatwić sprawdzanie stanu połączenia sieciowego w czasie rzeczywistym, na pasku tytułu wyświetlana jest ikona stanu sieci.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Jeśli połączenie sieciowe nie jest dobre, mogą wystąpić następujące ograniczenia:

- Niektóre funkcje będą ograniczone, takie jak zamawianie przypadku, tworzenie przypadku, udostępnianie za pośrednictwem Case Talk i synchronizacja w chmurze.
- Ogólna wydajność usługi może być zmniejszona ze względu na wpływ środowiska sieciowego.

W takim przypadku można wejść w tryb Offline, aby wykonać podstawowe zadania, a następnie skorzystać z funkcji wymagających internetu po uzyskaniu połączenia.

Uwaga

Symbol sieci wskazuje szybkość reakcji między bieżącym obszarem a AWS (Amazon Web Service). Nie oznacza to prędkości sieci, więc czasami może pokazać status jako słaby lub zły, nawet jeśli prędkość sieci jest wystarczająco duża.

Jeśli inny proces używa tej samej sieci, prędkość może pokazać się jako słaba lub zła, a ogólna wydajność Medit Link może być zła. W takiej sytuacji prosimy nie udostępniać sieci innym procesom.

Na przykład funkcja "Prześlij nieprzetworzone dane" jest ogromną częścią procesu sieciowego. Jeśli symbol pokazuje słaby lub zły stan, przejdź do Ustawienia > Prześlij nieprzetworzone dane i wyłącz "Prześlij automatycznie".

Ustawienia

Ogólne

Udostępnia opcje dotyczące ogólnej konfiguracji systemu.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Zapisz folder	Określić folder do przechowywania wyników danych wygenerowanych w Medit Link i podłączonych programach.	
Folder instalacji aplikacji	Określ ścieżkę instalacji aplikacji Medit Apps i aplikacji partnerskich dostępnych w App Box.	
Ustawienia językowe	Wybierz język dla programu.	
Oznakowanie zębów	Wybierz system oznakowania zębów pomiędzy FDI i US.	
Powiadomienia	Po zaznaczeniu będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach programu.	
Prześlij nieprzetworzone dane	Po zaznaczeniu, dane nieprzetworzone są automatycznie przesyłane do chmury. Pomaga to w tworzeniu kopii zapasowej danych oryginalnych i wykonywaniu bezproblemowego skanowania podczas korzystania z Medit Link z tym samym kontem na innym komputerze. Kopia zapasowa w chmurze danych oryginalnych dotyczy tylko danych pozyskanych w Medit Scan for Clinics.	
Szybkie skanowanie	Wybierz, czy chcesz, aby poniższe fazy skanowania były automatycznie wyświetlane w Medit Scan for Clinics bez konieczności wypełniania informacji w formularzu. • Przed-op dla Szczęki • Przed-op dla Żuchwy • Skan twarzy	
Opcje przeglądania	Zaawansowane renderowanie	Po zaznaczeniu, model 3D jest wyświetlany w bardziej żywym i realistycznym renderowaniu.
	Dostosuj teksturę koloru	Dostosuj jasność modelu 3D. * Wynikowe kolory mogą nieznacznie różnić się od Medit Link w przypadku otwarcia tych samych danych za pomocą innego oprogramowania.
Program poprawy doświadczeń użytkowników Medit	Dołącz do programu poprawy doświadczeń użytkowników Medit. • Zebrane informacje wykorzystujemy do udoskonalania naszych produktów i usług. • Nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.	
Strona domyślna po zalogowaniu	Wybór domyślnego menu wyświetlanego podczas uruchamiania programu. • Konta klinik mogą wybierać między Patient i Case Box • Konta laboratorium mogą wybierać między In Box i Work Box	

Zarządzanie pamięcią masową

Sprawdzaj i zarządzaj przestrzenią pamięci masowej lokalnej i w chmurze.

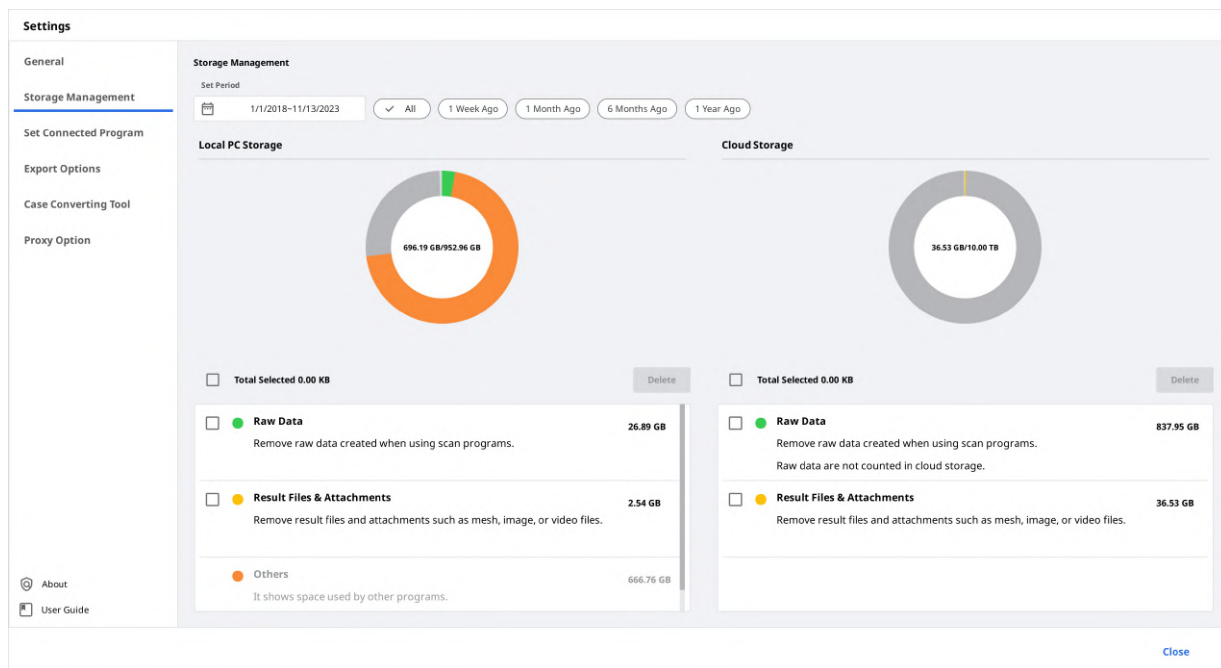

Ustaw okres

Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w poniższych ramach czasowych.

- Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki.
- 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia.
- 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia.
- 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia.
- 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.

Lokalna pamięć masowa

Zarządzaj przestrzenią dyskową komputera.

Dane nieprzetworzone	Usuń wybrane dane nieprzetworzone z komputera. Jeśli dane nieprzetworzone są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i wykorzystać, kiedy tylko chcesz.
Wynik & Załącznik	Usuń z komputera pliki wyników i załączników, takie jak siatki, obrazy i wideo. Jeśli te pliki są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i użyć, kiedy tylko chcesz.
Inne	Zobacz pliki używane do obsługi systemu i innych programów. Pokazuje pamięć masową komputera. Nie możesz usunąć tych plików z Medit Link.
Usuń	Usuń wybrane pliki z komputera.

Przechowywanie w chmurze

Zarządzaj przestrzenią pamięci masowej w chmurze.

Dane nieprzetworzone	Dane nieprzetworzone nie zajmują miejsca przy przechowywaniu w chmurze, więc nie będzie ich na wykresie pi-chart. Ale możesz zarządzać danymi nieprzetworzonymi z tego miejsca w razie potrzeby, np. Usunąć je, aby chronić prywatne informacje pacjenta itp.
Wynik & Załącznik	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w pamięci masowej w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Zakup pamięci masowej	Jeśli jesteś w planie Standard, subskrybuj plan Premium, aby rozszerzyć pojemność pamięci w chmurze.
Usuń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Ustaw podłączony program

Zarządzaj programami wspierającymi integrację w Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

 About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_Scan.exe

Apply

Close

Możesz podłączyć następujące programy:

	Konto kliniki	Konto laboratorium
Program skanujący	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Integracja następujących usług nie jest dostępna dla Medit Link for Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Opcje eksportowania

Ustaw sposób eksportowania plików z Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply


Close

63

Typ CAD	Wybierz program CAD, którego chcesz użyć do projektowania. Program dostosuje wyniki na podstawie Twojego wyboru, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez dodatkowego dopasowania osi.
Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie chcesz przechowywać wyniki.
Format siatki	Określ format końcowego pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja & Połącz	Kompresja plików: Skompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku. Połącz poszczególne siatki: Połącz wszystkie wyniki dla szczęki lub żuchwy w jeden plik. Kiedy używasz niektórych programów, które nie mogą importować i pracować z wieloma plikami, możesz połączyć je w jeden, aby pracować w tych programach.
Opcje, gdy ten sam folder lub plik już istnieje.	Wybierz domyślną akcję dla przypadków, gdy ten sam folder lub nazwa pliku istnieje w ścieżce docelowej. • Zawsze pytaj przy eksportowaniu. • Eksportuj nowy plik i nadpisz istniejące pliki. Aktualnie przechowywany plik zostanie utracony. • Utwórz folder i wyeksportuj pliki
Reguła dotycząca nazwy folderu	Określenie zasad tworzenia nazwy folderu podczas eksportu plików. Ustawione zasady będą stosowane do nazewnictwa folderów, a eksportowany plik będzie zapisywany w utworzonym folderze. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia
Reguła dotycząca nazwy pliku	Zdefiniuj reguły dla nazwy eksportowanego pliku. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia

Narzędzie do konwersji przypadków


Możesz przenosić przypadki między różnymi kontami, eksportując istniejące przypadki z konta lub importując przypadki wyeksportowane z innych kont.

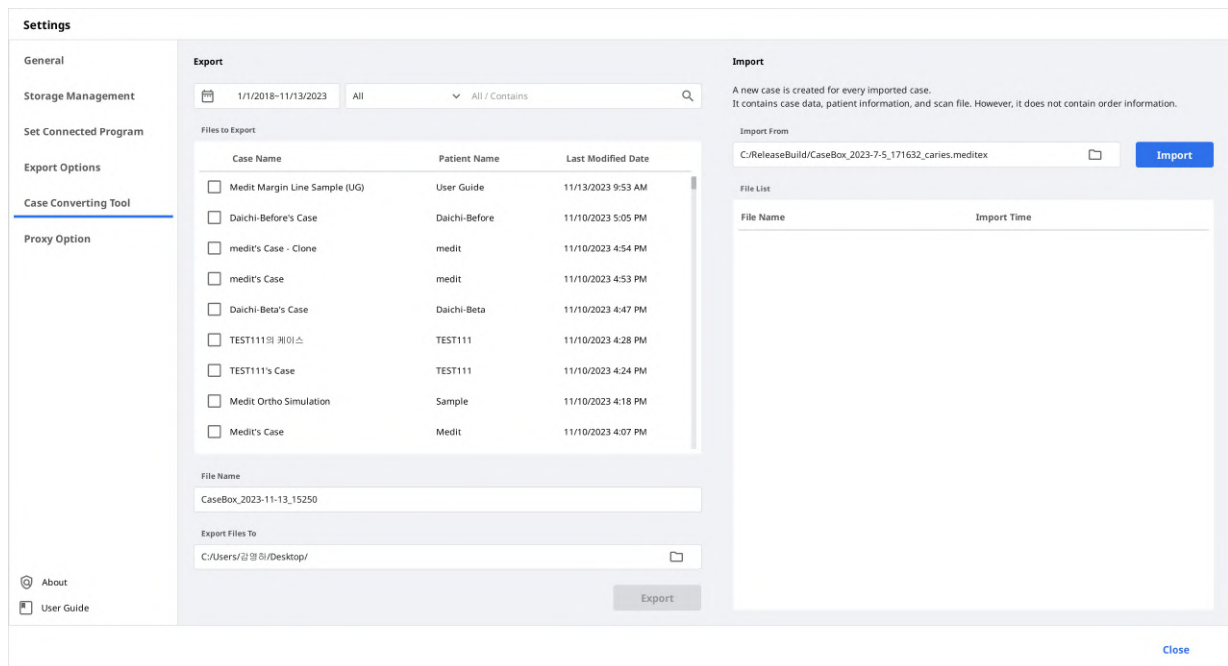


Eksportuj przypadek

Eksport przypadków aktualnie zalogowanego konta do lokalnego komputera.

1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

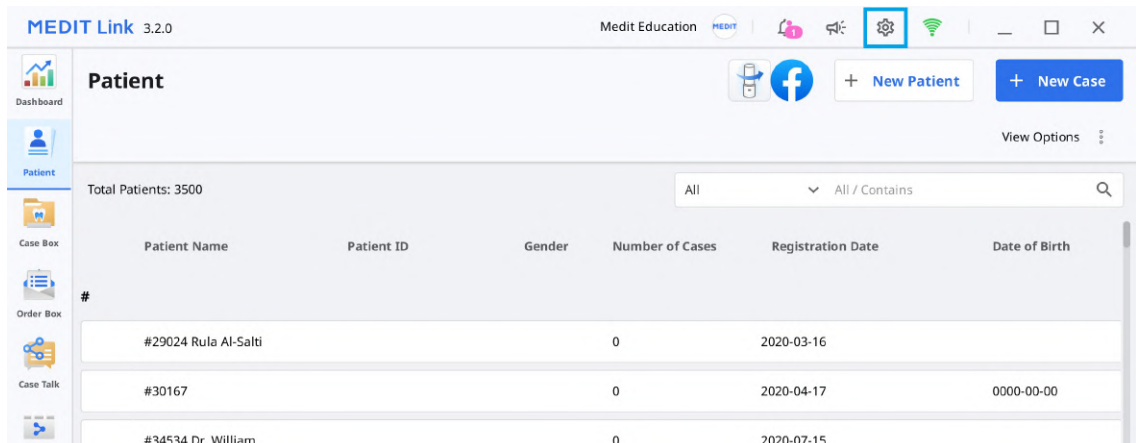

2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

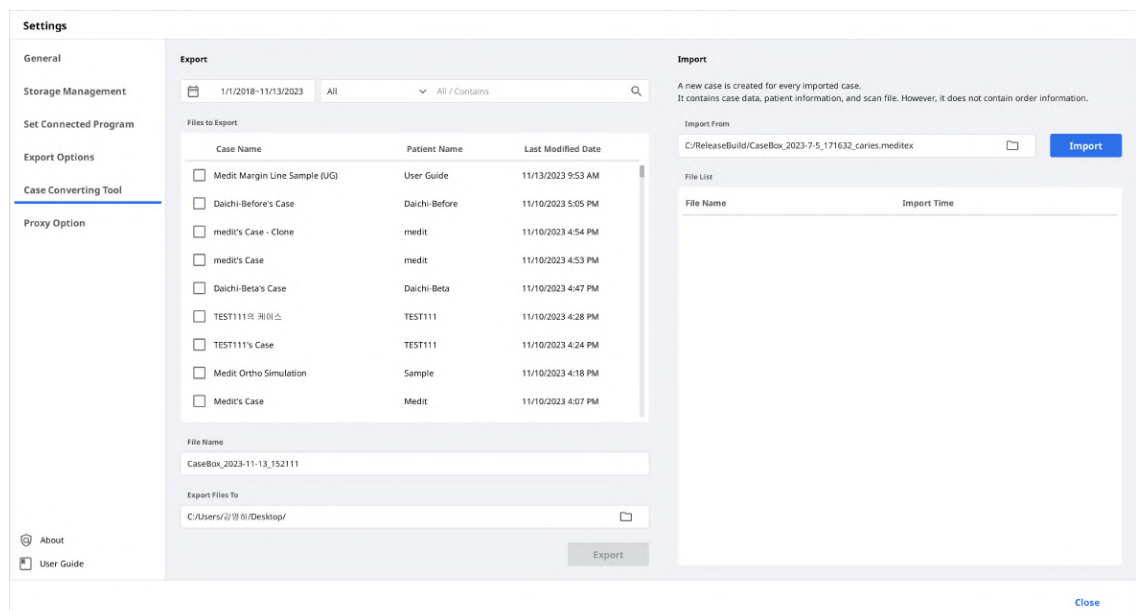

3. W sekcji Eksport ustaw okres lub wyszukaj przypadki do wyeksportowania, jeśli to konieczne.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☒ Contains
☐ Equals

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

4. Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować z listy w sekcji "Plik do eksportu".

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Ustaw nazwę pliku, edytując nazwę przypadku w polu Nazwa pliku.
6. Ustaw folder docelowy, aby wyeksportować wybrane przypadki.
7. Kliknij "Eksportuj".
8. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, do którego eksportowany jest plik.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Eksportowane przypadki są zapisywane w formacie pliku .meditex.

Importuj przypadek

1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk


Patient

Total Patients: 3500


All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024	Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167				0	2020-04-17	0000-00-00
#34534	Dr. William			0	2020-07-15	


2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

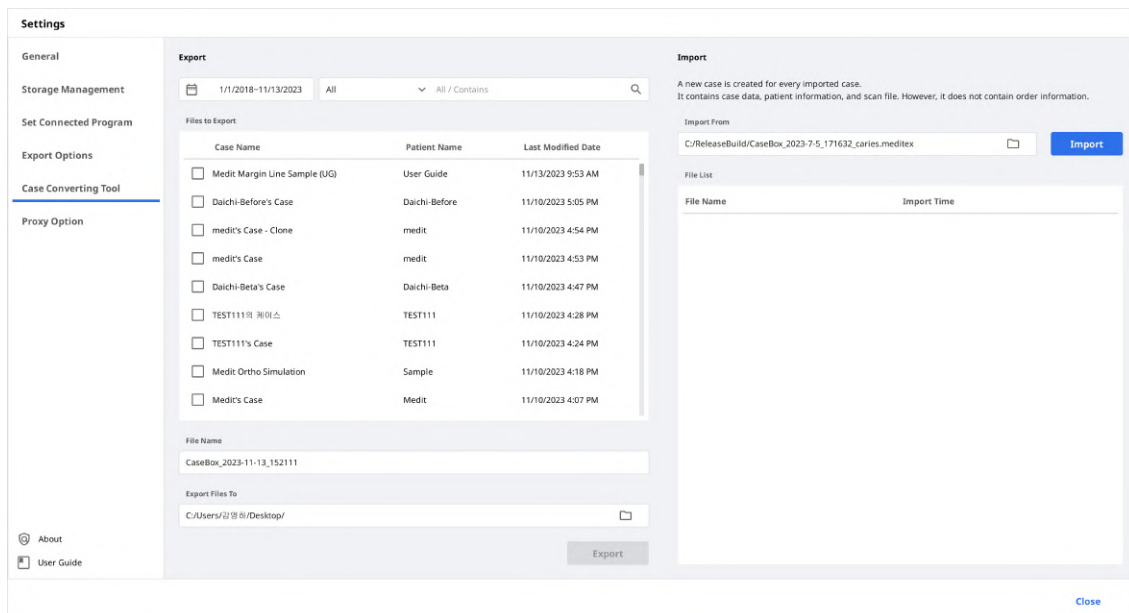

3. W sekcji Importuj kliknij ikonę folderu, aby wyszukać na komputerze plik .meditex, który chcesz importować.

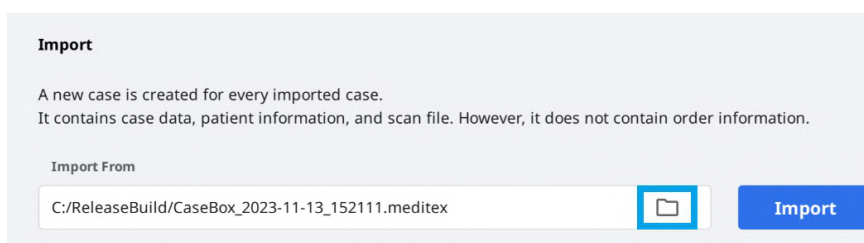

4. Kliknij przycisk "Importuj" i zaznacz pliki do zaimportowania na poniższej liście.

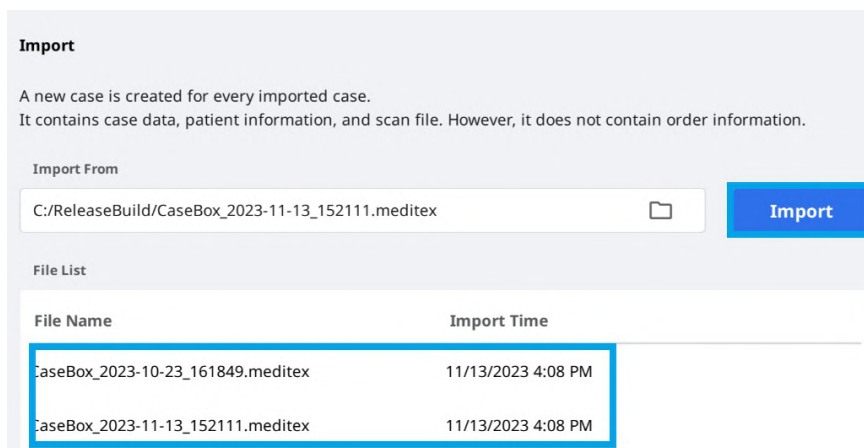

5. Zaimportowany przypadek pojawi się również w Case Box (konto Kliniki) lub Work Box (konto Laboratorium).

Opcje proxy

W niektórych ograniczonych środowiskach sieciowych można zmienić ustawienia sieci.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

O programie

Pokaż szczegółowe informacje o Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Podręcznik użytkownika


Pobierz przewodnik użytkownika do Medit Link.

Otwarcie podręcznika użytkownika wymaga połączenia z Internetem.

Menu

Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej na Medit Link w zwizualizowanych wykresach i tabelach - zarówno w aplikacji Medit Link App jak i Web.

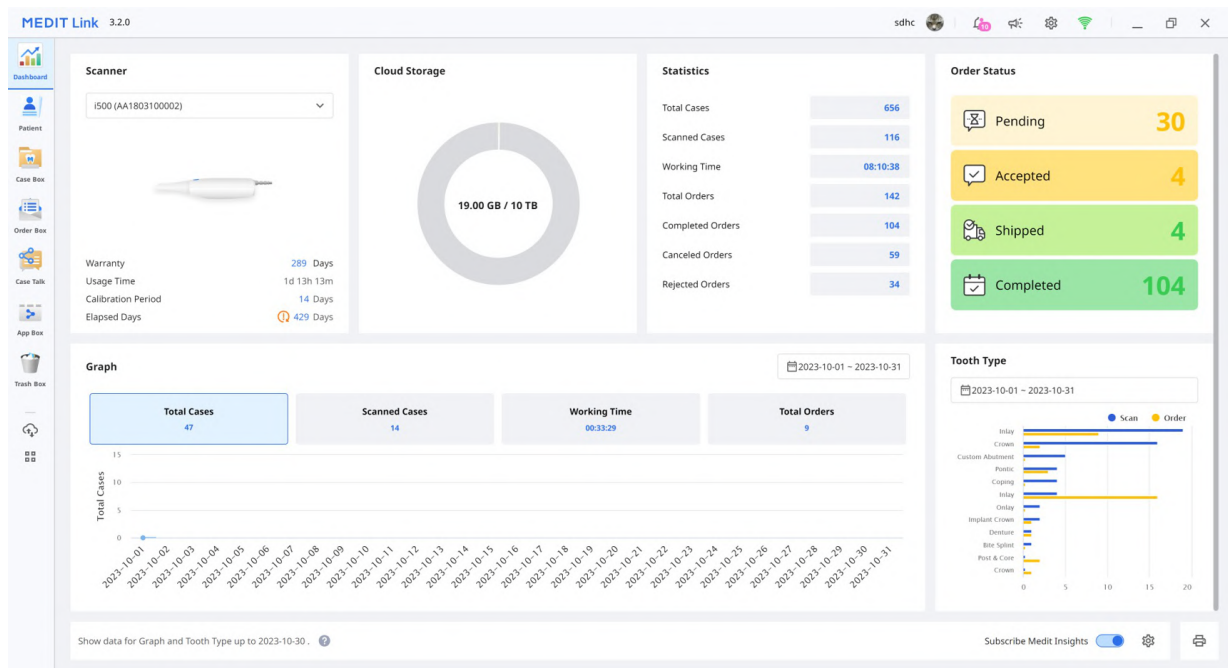

Uwaga

Prosimy odnieść się do [Medit Link Web > Dashboard](#), aby uzyskać więcej informacji na temat dashboard i Medit Insights.

Patient

Możesz dodawać, edytować, usuwać lub łączyć pacjentów w menu Patient.

Patient

Total Patients: 106

View Options

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
K k						
KELLY				1	2021-07-02	<button>Scan</button> ⋮
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	<button>Scan</button> ⋮
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	<button>Scan</button> ⋮
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	<button>Scan</button> ⋮
Michele Rinn				3	2021-04-26	<button>Scan</button> ⋮
N n						
newpatient				1	2022-10-13	<button>Scan</button> ⋮
O o						
ORG_Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	<button>Scan</button> ⋮
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	<button>Scan</button> ⋮
R r						

Dodaj nowego pacjenta

1. Kliknij "Nowy pacjent".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. Wypełnij wymagane informacje w oknie dialogowym Nowy pacjent, a następnie kliknij "Zapisz".

Usuń pacjenta



Pacjenta można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma dla niego żadnych przypadków.

1. Wybierz z listy pacjenta, którego chcesz usunąć.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Temporaries				0	2023-10-04	
T.O.P.	케피논	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Kliknij "Usuń".

Łączenie pacjentów

Możesz połączyć wszystkie przypadki wielu pacjentów w jednego pacjenta.

1. Wybierz z listy pacjentów, których chcesz połączyć.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Temporaries				0	2023-10-04	
T.O.P.	케피논	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Kliknij "Połącz pacjentów".
3. Wybierz pacjenta docelowego, z którym chcesz połączyć wszystkie przypadki.
4. Wszystkie przypadki są łączone z pacjentem docelowym, a informacje o pacjencie docelowym są utrzymywane.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#)
[Apply](#)

5. Kliknij "Zastosuj", aby kontynuować scalanie.

Case Box/Work Box

1 Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

2 Order Open

3 Form File Viewer

4 Scan Completed

5 Copy Menu

6 Type Method Material Shade Favorites

7 Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

Teeth Arch

Cancel Save

- 1 Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
- 2 Udostępnienie kluczowych funkcji: Przycisk Skanuj lub Otwórz, przycisk Zamówienie, ikony aplikacji.
- 3 Pokaż dostępne zakładki: Formularz, Przeglądarka plików.
- 4 Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami.
- 5 Pokaż interfejs użytkownika formularza rejestracji dla wybranego programu do skanowania.
- 6 Podaj typ/metodę/materiał/odcień, który użytkownicy mogą wybrać dla wybranego numeru zęba.
- 7 Pokaż informacje o typie/metodzie/materiale/odcieniu zastosowanym dla wybranych zębów.

Zakładki w Case Box/Work Box

Formularz	Przeglądarka plików
Zakładka Formularz zapewnia interfejs użytkownika do wprowadzania podstawowych informacji dotyczących skanowania pracy, takich jak typ, metoda, materiał dla numerów zębów i opcje skanowania. Wprowadzone informacje są przekazywane do podłączonego programu skanującego i wykorzystywane jako informacje o zamówieniu podczas składania zamówienia u partnera.	Przeglądaj pliki wynikowe generowane przez programy skanujące i CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Funkcje w Case Box/Work Box

Następujące funkcje są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokazuje status przypadku.
	Przejdź do Order Box/In Box	Zapewnia skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki &Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Historia przypadku	Podaje szczegółowe informacje na temat historii przypadku. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Usuń	Usuń przypadek. Nie możesz usunąć zamówionych przypadków lub przypadków, które zostały utworzone w trybie offline.
	Klonuj	Utwórz powtórzenie bieżącego przypadku w Case Box. Wszystkie dane zostaną skopiowane do sklonowanego przypadku. Ta funkcja pomaga powielić informacje o leczeniu tego samego pacjenta lub wykonać dodatkowe zamówienie z tymi samymi informacjami lub plikami.
	Dołącz	Dołącz pliki w różnych formatach.
	Eksportuj	Eksportuj pliki wyników skanowania lub CAD do lokalnego komputera. Możesz wybrać preferowany format pliku podczas eksportowania plików. Wyeksportowane pliki mogą być wykorzystywane w oprogramowaniu CAD i CAM do dalszej pracy.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Możesz udostępnić link swobodnie każdemu lub tylko określonym osobom. Kod PIN lub data ważności linku mogą być ustawione w celu zabezpieczenia prywatnych informacji.
	Przełącz prośbę opomoc techniczną	Przejdź do strony Centrum Pomocy Medit, aby przesłać wniosek o pomoc techniczną.

Order Box/In Box

Order ID	Patient Name	Partner Name	Scan Date	Order Date	Requested Delivery Date	Expected Delivery Date
5996137	Occlusion Test	WonhoonChoi_Lab_Stage	2023-04-20	2023-04-20 08:15	2023-04-27	2023-04-27 08:15

Type	Method	Material	Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
3	Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików.
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
5	Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
6	Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.

Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak numer zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom, każdemu z linkiem udostępniającym lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez Case Talk w Medit Link App i Medit Link Web.

Uwaga

Usługa Case Talk wymaga połączenia z internetem.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.

App Box

App Box zapewnia różne programy dodatkowe, które uzupełniają podstawowy przepływ pracy skanowania i zwiększają wydajność. Możesz pobrać i zainstalować udostępnione aplikacje, aby tworzyć urządzenia dentystyczne, analizować dane skanowania, pomagać podczas konsultacji lub usprawniać proces pracy.

Wszystko


Zakładka "Wszystko" pokazuje listę wszystkich udostępnionych aplikacji, w tym oryginalnych aplikacji opracowanych przez Medit (Medit Apps) i aplikacji partnerskich, które są aplikacjami integracyjnymi z partnerami Medit z różnych sektorów stomatologii cyfrowej, takich jak druk 3D, oprogramowanie CAD / CAM itp.

Medit Apps

Zakładka "Medit Apps" pokazuje tylko listę oryginalnych aplikacji opracowanych przez Medit.

Pobrane

Zakładka "Pobrane" wyświetla listę aktualnie zainstalowanych aplikacji na komputerze oraz aplikacji, które zostały pobrane przez konto użytkownika w przeszłości.

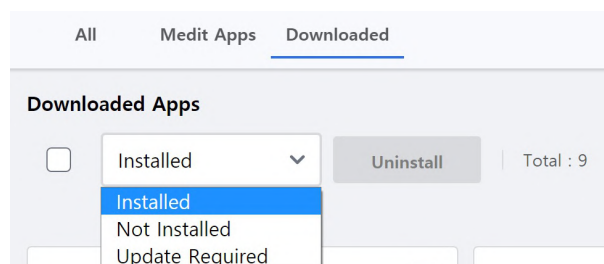

- **Zainstalowane:** Opcja wyświetla tylko aplikacje zainstalowane na komputerze, na którym użytkownik jest aktualnie zalogowany.
- **Nie zainstalowane:** Ta opcja pozwala zobaczyć aplikacje zainstalowane na innych komputerach, dzięki czemu można je szybko zainstalować.
- **Wymagana aktualizacja:** Ta opcja pokazuje tylko aplikacje zainstalowane na bieżącym komputerze, które wymagają aktualizacji.

Trash Box

Trash Box tymczasowo przechowuje usunięte przypadki. Każdy przypadek z Trash Box może zostać przywrócony lub trwale usunięty.

⚠ Uwaga

Dane usunięte z Trash Box zostaną trwale usunięte z komputera oraz serwera i nie będzie można ich odzyskać.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Administrator synchronizacji przypadków

Administrator synchronizacji przypadków pomaga w przesyłaniu i pobieraniu przypadków w Medit Link. Możesz przesać wiele przypadków do chmury lub pobrać je na lokalny komputer.

Case Synchronization Manager

Upload Download

Total Count: 240 Cancel All Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case11111111111111111111111111213123131312333111111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Prześlij

Wszystkie przypadki / Wybrane przypadki	Sprawdź liczbę wszystkich/wybranych przypadków, które należy przesłać.
Prześlij wszystko	Prześlij wszystkie przypadki do chmury.
Anuluj wszystko	Anuluj wszystkie wnioski o przesłanie danych.
	Prześlij przypadek do chmury.
	Anuluj przesyłanie przypadków.
	Spróbuj ponownie przesłać przypadek.

Pobierz


Wszystkie przypadki / Wybrane przypadki	Sprawdź liczbę wszystkich/wybranych przypadków, które należy pobrać.
Pobierz wszystko	Pobierz wszystkie przypadki na komputer.
Anuluj wszystko	Anuluj wszystkie wnioski o pobranie.
	Pobierz przypadki na komputer.
	Anuluj pobieranie przypadków.
	Ponów próbę pobrania przypadku.

Powiązane strony internetowe

Możesz przejść bezpośrednio do menu dostępnych tylko w Medit Link Web, takich jak My Info, Partners i Membership. Prosimy odnieść się do Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) i [My Info](#) w celu uzyskania szczegółowych opisów menu Medit Link Web.

Możesz uzyskać dostęp do sklepu internetowego Medit, Medit Shop, w którym możesz zakupić przedłużoną gwarancję na skanery i inne produkty Medit, takie jak plecaki na skanery.

Możesz również uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Centrum pomocy Medit, kanał YouTube Medit Academy i internetowa platforma edukacyjna Medit Academy.

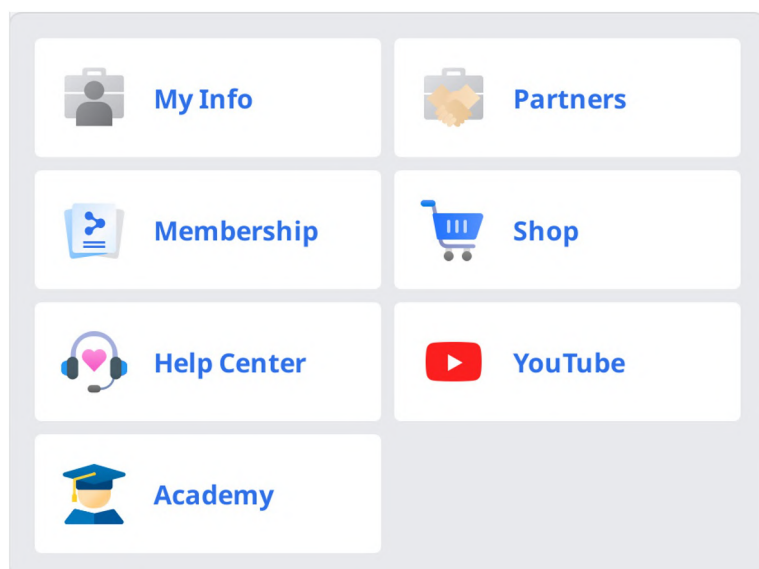

Przeglądarka plików

Przeglądarka plików grupuje i pokazuje różne dane, w tym dane pozyskane z programów połączonych z Medit Link oraz dane dołączone przez użytkowników.



Zapewnia podstawowe funkcje zarządzania, takie jak pokazywanie/ukrywanie danych, dostosowywanie nieprzejrzystości i usuwanie danych.

Obsługuje podglądy plików w następujących formatach:

- Dane 3D: STL, OBJ, PLY
- Obrazy 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Pliki wideo: MKV, MP4, AVI, WMV

Drzewo danych

Możesz grupować i wyświetlać wszystkie dane dla przypadku w drzewie danych. Możesz również pokazać/ukryć dane, dostosować przezroczystość i usunąć dane z drzewa danych.

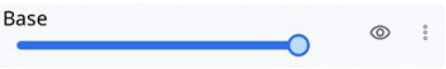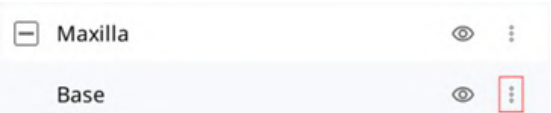	Pokaż/Ukryj	Możesz pokazać lub ukryć dane.
	Nieprzejrzystość	Suwak pojawia się po kliknięciu jednych z danych na drzewie danych. Możesz dostosować nieprzejrzystość wyświetlanych danych, przesuwając suwak. 
	Więcej	Kliknięcie ikony Więcej pokazuje dodatkowe dostępne funkcje.  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane, a wyświetl tylko te odpowiednie. • Ukryj: Ukryj dane. • Powtórzenie: Skopiuj dane i dodaj je do grupy załączników. • Eksportuj: Eksportuj wybrane pliki. • Zmień nazwę: Zmień nazwę danych. • Usuń: Usuń dane.





Uwaga

Możesz zmienić nazwę danych w trybie online.

Narzędzia kontroli modelu

Kontrola modelu 3D

	Przesuń	Przenosi model.
	Obróć	Obraca model.
	Przybliż/Oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
	Tryb wyświetlania modelu	Tekstura włączona
		Tekstura wyłączona
	Ustawienia siatki (mm)	Siatka włączona
		Nakładka włączona
		Siatka wyłączona
		Ukryj siatkę.

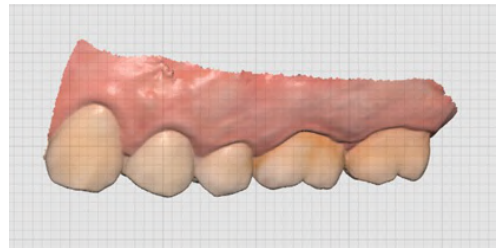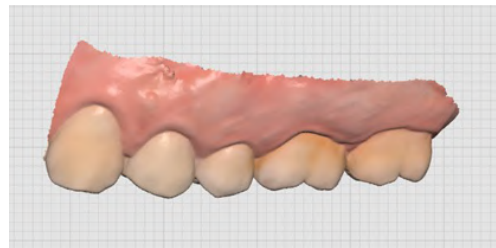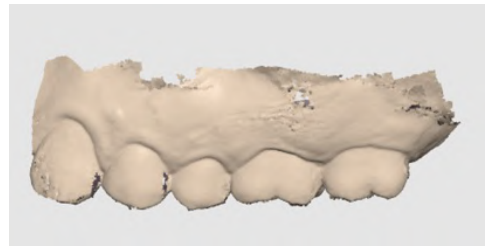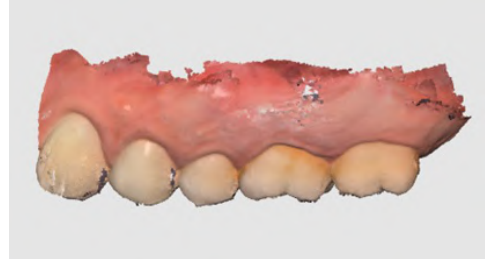

Kontrola obrazu 2D


	Następny/Poprzedni obraz	Poruszanie się pomiędzy obrazami.
	Edytuj	Edytuj obraz.
	Kompresuj/Wklej okno	Możesz odłączyć okno obrazu i ustawić je w żądanej pozycji. Można zmienić rozmiar okna. Po przywróceniu okna do pierwotnej lokalizacji wraca ono do domyślnego rozmiaru.

Narzędzia funkcyjne

Przechwytywanie obrazu i Notatka


Przechwyć bieżący ekran jako obraz 2D, narysuj na nim lub dodaj notatki.


Możesz zapisać go jako plik ze swoimi notatkami i wysłać jako referencje.

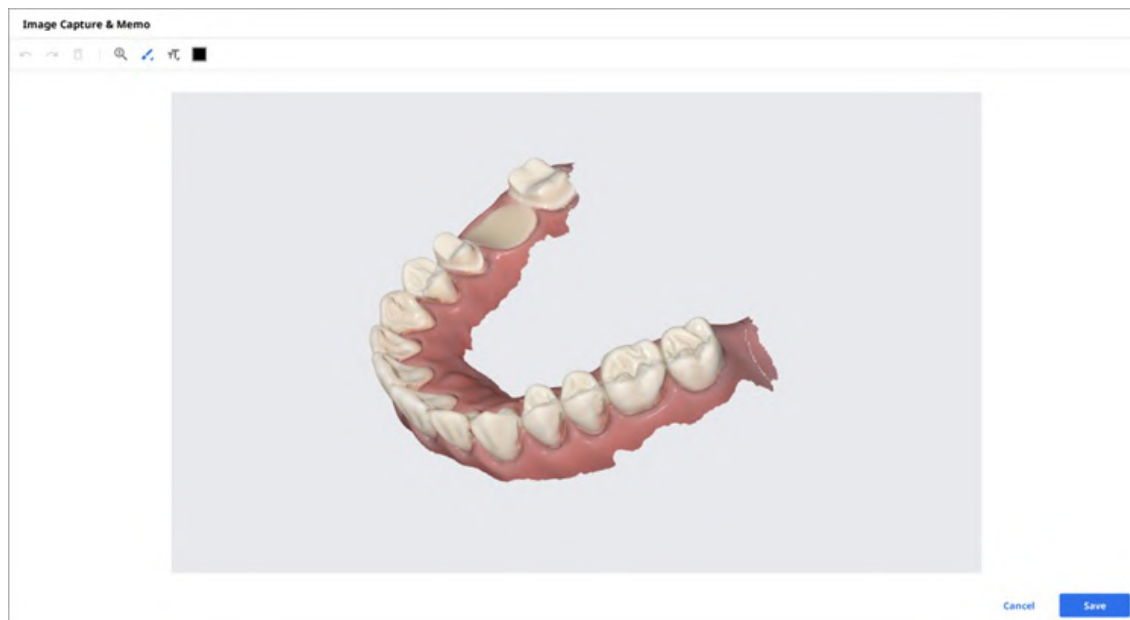

Przechwytywanie obrazów ortodontycznych

Przechwytywanie obrazów w aktualnym kierunku widzenia oraz góra/dół/lewo/prawo od aktualnego kierunku widzenia.

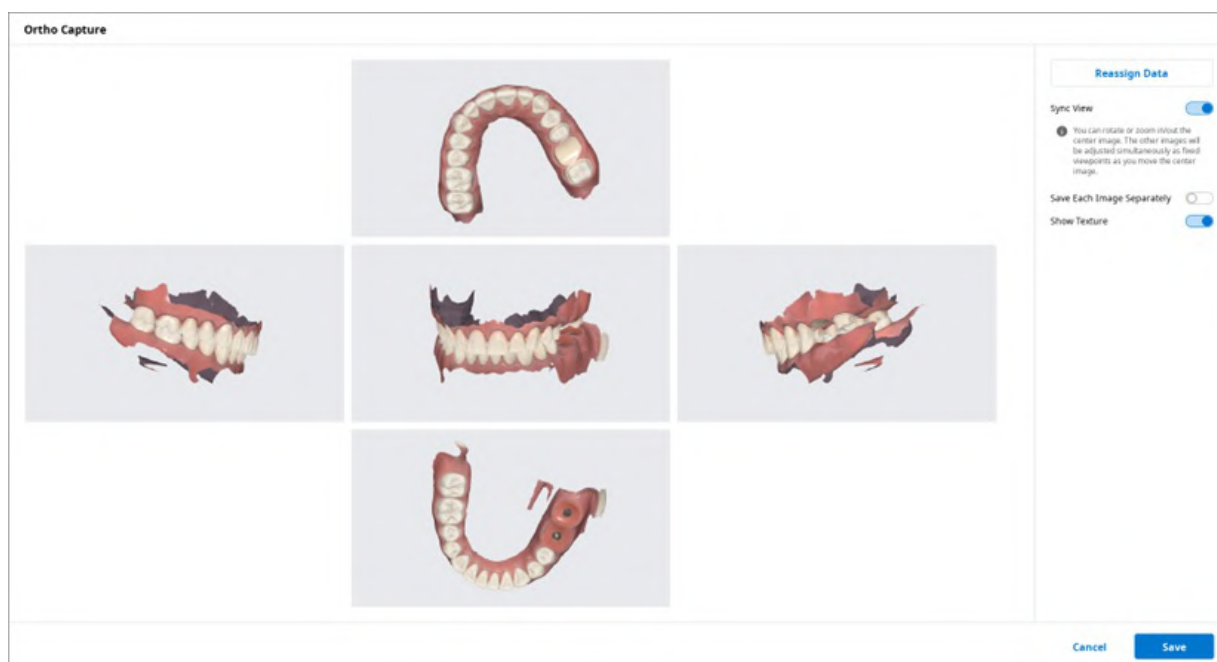

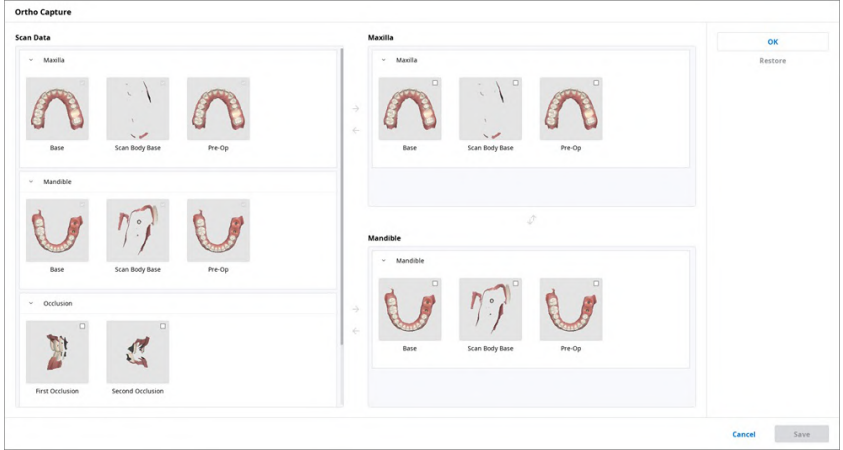Widok synchronizacji	Gdy jest włączona, możesz obracać lub powiększać/pomniejszać środkowy obraz. Pozostałe obrazy będą regulowane jednocześnie jako stałe punkty widzenia w miarę przesuwania obrazu centralnego. Po wyłączeniu możesz przesuwać, obracać lub powiększać/pomniejszać wszystkie obrazy indywidualnie.
Zapisz każdy obraz osobno	Zapisz każdy obraz w wysokiej rozdzielczości.
Pokaż teksturę	Włączenie/wyłączenie tekstury dla modelu.
Ponowne przypisanie danych	Zmień dane dla szczęki/żuchwy za pomocą funkcji Ponowne przypisanie danych. Możesz użyć zmienionych danych do utworzenia i wykorzystania obrazów wynikowych w Przechwytywaniu obrazów ortodontycznych.  • Dane skanowania: Pokazane są wszystkie dane skanowania dla danego przypadku. • Szczeka: Wyświetlane są dane wybrane dla szczęki. • Żuchwa: Wyświetlane są dane wybrane dla żuchwy.


Wypełnij luki

Wypełnij luki w danych siatki 3D.



Przycinanie


Przycinanie zapewnia różne narzędzia do edycji danych.

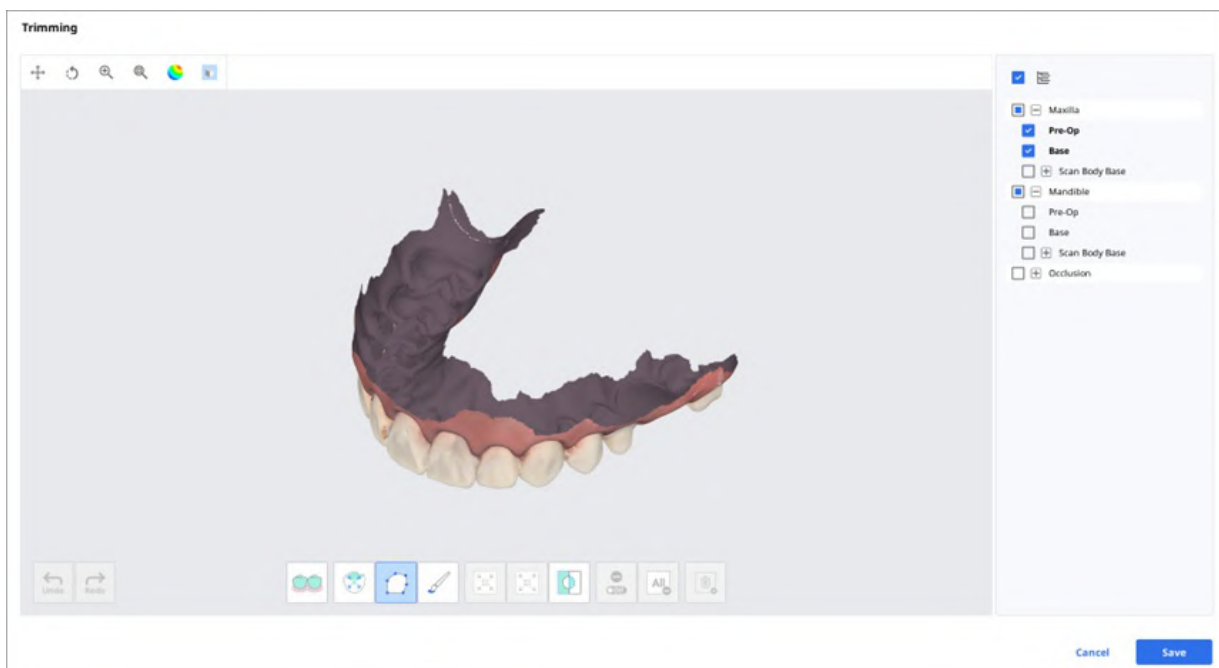

Wybrane dane siatki 3D mogą być edytowane za pomocą różnych narzędzi znajdujących się w dolnej części okna.

Wybór		Inteligentny wybór zębów	Automatycznie wybiera wszystkie zęby łuku, pomijając części dziąsła. Uwaga Ta funkcja jest dostępna tylko dla danych skanowania pozyskanych za pomocą Medit Scan for Clinics z włączoną opcją "Użyj GPU".
		Inteligentny wybór pojedynczego zęba	Automatycznie zaznacz obszar pojedynczego zęba jednym kliknięciem. Możesz kliknąć lub przeciągnąć ząb.
		Wybór krzywej	Wybiera wszystkie elementy w obrębie krzywej wyrysowanej na ekranie.
		Wybór pędzla	Zaznacz wszystkie elementy na ścieżce narysowanej odręcznie na ekranie. Zostanie wybrana tylko przednia strona. Pędzel jest dostępny w trzech różnych rozmiarach.
Regulacja wybranego obszaru		Skurcz wybrany obszar	Redukuje wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Rozszerz wybrany obszar	Rozszerza wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Odwróć wybrany obszar	Odwraca wybór.
Usunięcie wyboru		Wybór/Odrzucenie wyboru	Gdy jest to włączone, odznacz obszar za pomocą różnych narzędzi.
		Wyczyść wszystkie wybory	Oczyszcza cały wybrany obszar.
		Usuń wybrany obszar	Usuń dane z wybranego obszaru.

1. Zaznacz obszar, który chcesz przyciąć, używając narzędzi do zaznaczania obszaru.

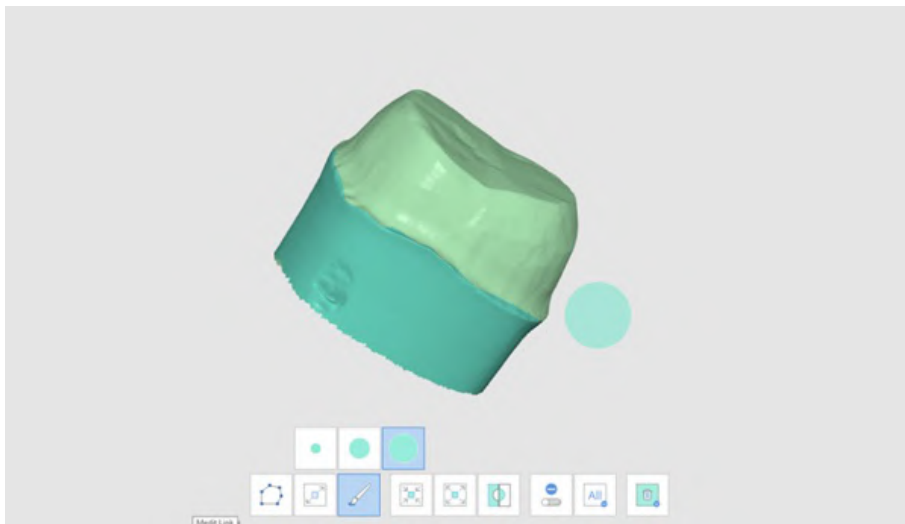


Uwaga


Narzędzie do przycinania polilinii zaznacza wszystkie elementy w obrębie kształtu polilinii narysowanego na ekranie, podczas gdy narzędzie do przycinania pędzlem zaznacza tylko dane powierzchni czołowej.

2. Możesz odwrócić, zmniejszyć lub rozszerzyć zaznaczenie za pomocą następujących trzech narzędzi.


- Odwróć wybrany obszar

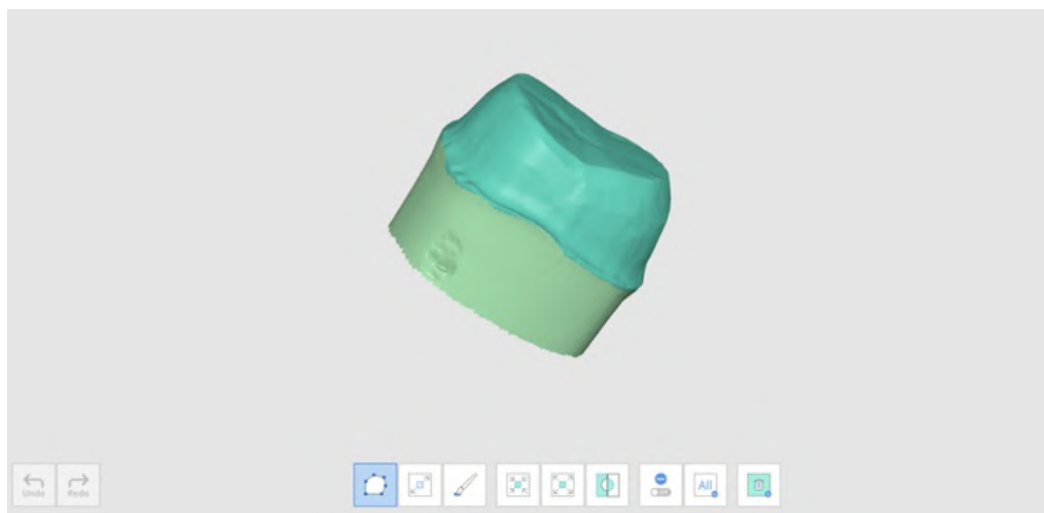

- Skurcz wybrany obszar

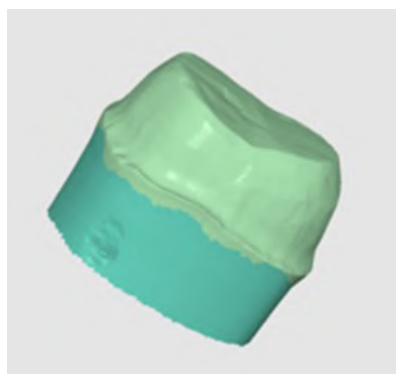


- Rozszerz wybrany obszar

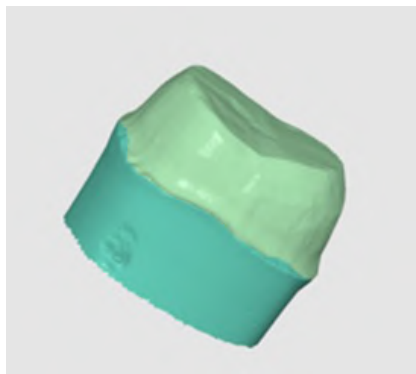




3. Możesz odznaczyć wybrane obszary za pomocą narzędzia Usuń wybrany obszar.

Optymalizuj dopasowanie okluzji

Optymalizacja dopasowania okluzji. Możesz wybrać dane docelowe i dostosować dopasowanie okluzji.

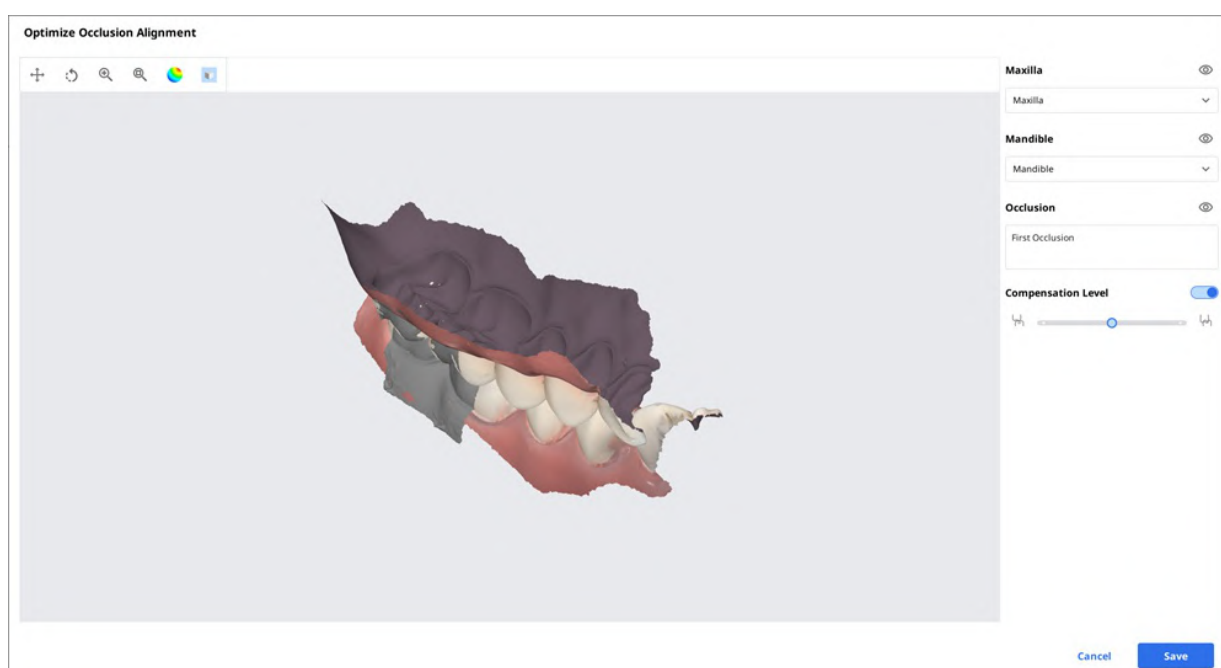


Poziom wyrównania

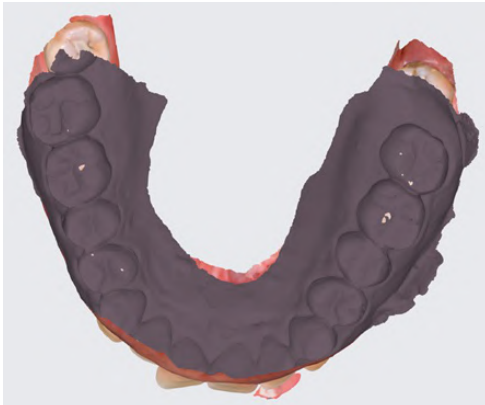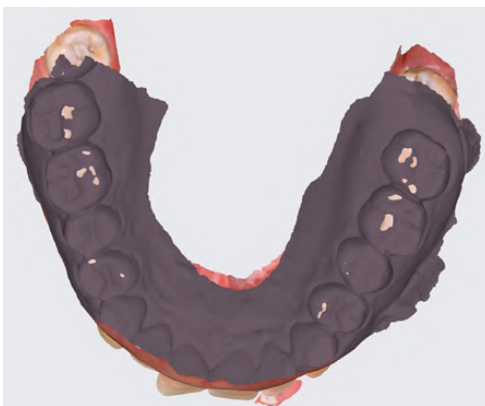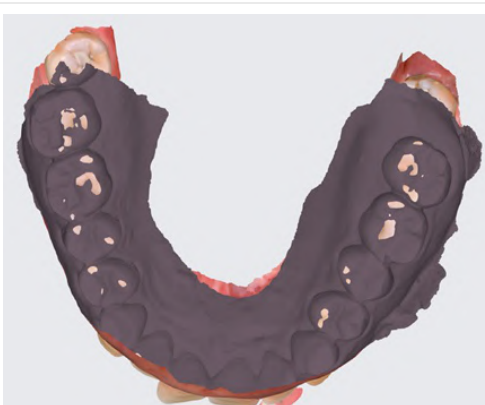Niski	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☒ $\frac{3}{4}$	
Średni	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{4}$	
Wysoki	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{4}$	
Wyłączone	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{4}$	

Ruch żuchwy

Możesz odtworzyć ruchy żuchwy zarejestrowane w Medit Scan for Clinics, aby zobaczyć dynamiczne kontakty okluzyjne pomiędzy górnym i dolnym uzębieniem.

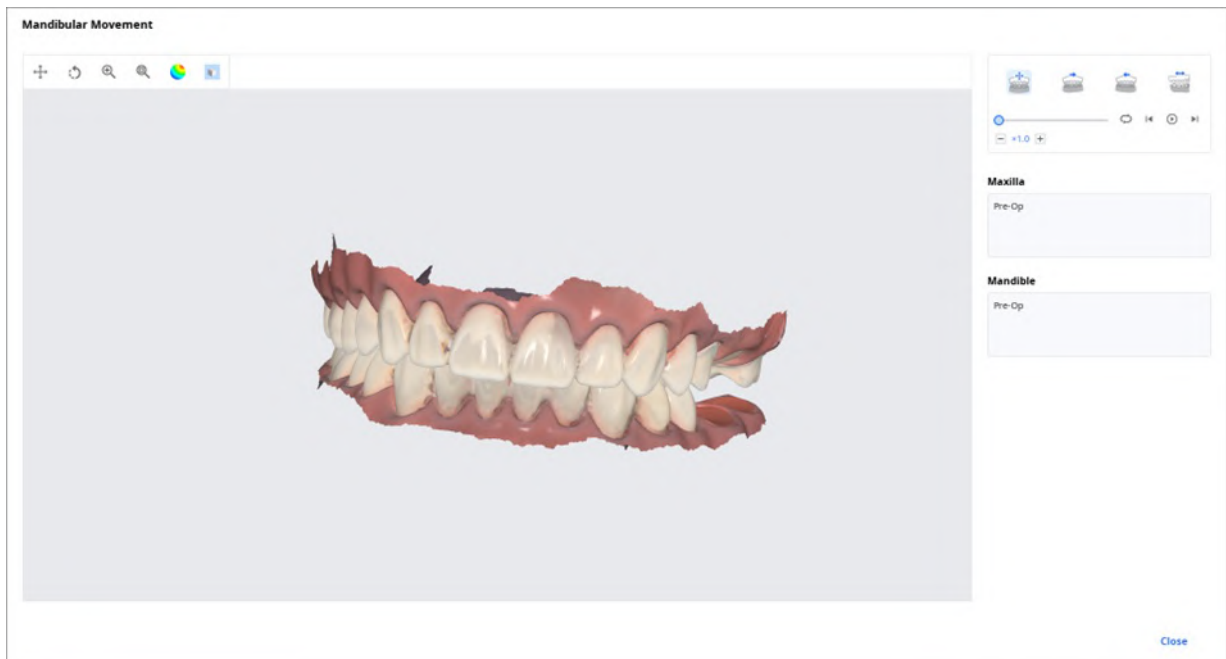

	Ruch swobodny	Odtwórz nagranie swobodnego ruchu żuchwy.
	Lewy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się w lewo.
	Prawy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się w prawo.
	Ruch wysunięty	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się do przodu.

Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików

Możesz uzyskać wiele wyników danych okluzji z aplikacji Medit Scan.

Medit Link udostępnia funkcję zarządzania wynikami poprzez "Przeglądarkę plików".

Jak zarządzać wieloma wynikami


Gdy użytkownik otrzymuje wiele wyników okluzji z Medit Scan for Clinics, Medit Link zapewnia możliwość wyboru wyniku.

Lista wyników jest ułożona według nazw i możesz wybrać jedną pozycję.

Wybrany model zostanie pokazany w "Drzewie danych" i "Obszarze wyświetlania modelu".



Możesz zwinąć listę i zmienić pozycję za pomocą ikon strzałek.

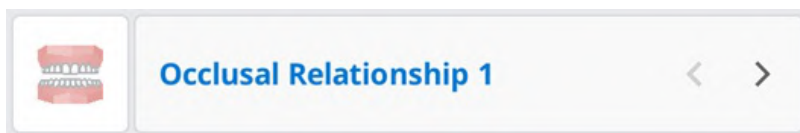

Przeglądaj opcje

Możesz zmienić Przeglądaj opcje, aby dostosować układ listy przypadków w polu Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtry statusu

Pokaż lub ukryj każdy filtr reprezentujący status przypadku. Ukryte filtry statusu nie są wyświetlane na ekranie w Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Możesz łatwo znaleźć potrzebny przypadek za pomocą filtrów statusu.

- Możesz kliknąć status, który chcesz zobaczyć, aby wyświetlić tylko przypadki z danym statusem.
- Możesz wybrać wiele statusów jednocześnie.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje filtrowania:

Pole	Filtry statusu
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Pozycje tabeli

Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na liście przypadków w polu Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Możesz zmienić kolejność elementów tabeli lub dostosować szerokość kolumn tabeli w widoku listy, aby jak najlepiej zoptymalizować środowisko użytkownika.

Dla każdego pola dostępne są następujące pozycje tabeli:

Pole	Pozycje tabeli
Patient	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / płeć / liczba przypadków / data rejestracji / data urodzenia
Case Box	Status / Nazwa przypadku / Data urodzenia / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
Order Box	Status / Nazwa przypadku / Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Wnioskowana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji
In Box	Status / Nazwa przypadku / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki
Work Box	Status / Nazwa przypadku / Nazwa pacjenta / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Data skanowania / Nazwa kliniki / Data zamówienia

Typ przeglądu

Zmień typ przeglądu między Widokiem galerii a Widokiem listy w Case Box.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje typu przeglądu:

Pole	Opcje typu przeglądu
Patient	Widok listy
Case Box	Widok listy / Widok galerii
Order Box	Widok listy
In Box	Widok listy
Work Box	Widok listy

Grupowanie

Wybierz opcję grupowania, aby sklasyfikować i zmienić kolejność przypadków na liście według wybranej opcji.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje grupowania:

Pole	Opcje grupowania
Case Box	Brak / Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia
Order Box	Brak / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
In Box	Brak / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
Work Box	Brak / Wnioskowana data dostawy



Opcje grupowania są niedostępne w polach Patient, Case Talk i Trash Box.

Sortowanie

Wybierz opcję sortowania, aby zmienić kolejność przypadków na liście zgodnie z wybraną opcją.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje sortowania:

Pole	Grupowanie	Opcje sortowania
Patient	-	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / Data urodzenia / Data rejestracji / Liczba przypadków
Case Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / data ostatniej modyfikacji / data skanowania / data zamówienia / nazwa laboratorium
	Nazwisko pacjenta	Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Nazwa laboratorium
Order Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Wnioskowana data dostawy	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
In Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Nazwa kliniki
Work Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki


Uwaga

Opcje sortowania są niedostępne w Case Talk i Trash Box.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Filtruj według pacjenta

Filtrowanie i wyświetlanie przypadków według nazwiska pacjenta. Możesz utworzyć listę, filtrując tylko tych pacjentów, nad którymi chcesz pracować.

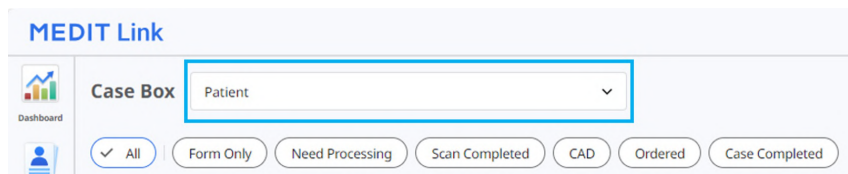


MEDIT Link

Case Box Patient

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Wprowadź nazwisko pacjenta.

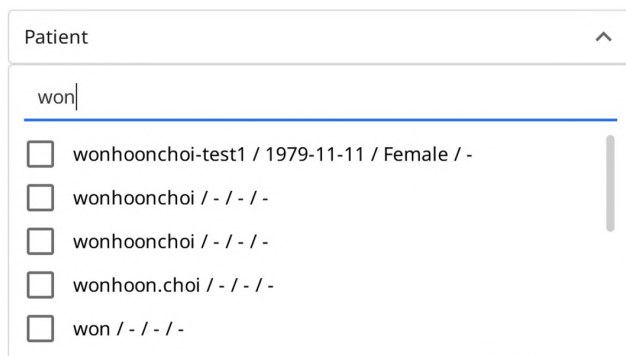


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Wybierz pacjentów spośród poniższych wyników wyszukiwania.

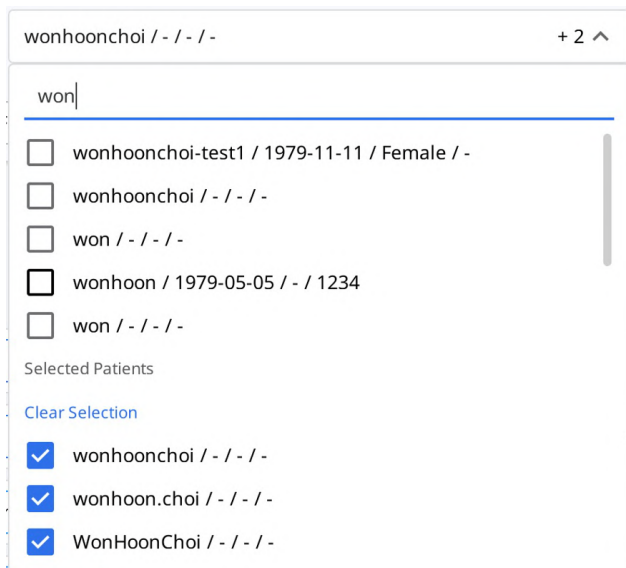

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. na liście zostaną wyświetlone tylko przypadki wybranych pacjentów.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtr według daty

Filtruj i wyświetlaj przypadki ostatnio zmodyfikowane w określonym czasie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Wybierz czas trwania z listy.

- o Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- o Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- o Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- o Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane wczoraj.
- o Minione 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- o Minione 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- o Ten miesiąc: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w tym miesiącu.
- o Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki zmodyfikowane w ciągu poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Wykorzystaj możliwości wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

All Search / Contains

Następujące kryteria wyszukiwania są dostępne dla każdego pola:

Patient	Wszystkie, Imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta
Case Box	Wszystkie, Nazwa przypadku, Nazwa pacjenta, ID pacjenta, Formularz informacji, Nazwa laboratorium
Order Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium, ID zamówienia
In Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia
Work Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, formularz informacji, nazwa kliniki, ID zamówienia
Case Talk	Nazwa przypadku (Zawiera), Nazwa pacjenta (Równa się)
Trash Box (Klinika)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa laboratorium, usunięte przez
Trash Box (Laboratorium)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, usunięte przez

Możesz wybrać Kryteria wyszukiwania i wybrać między logiką Zawiera i Równne.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek

Tworzenie przypadków

Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Wprowadź podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa przypadku.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, którego nie ma na liście pacjentów, zostanie dodany nowy pacjent.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, które znajduje się na liście pacjentów, możesz je wybrać z listy.
 - Jeśli rejestrujesz przypadek dla istniejącego pacjenta, kliknij ikonę Lista pacjentów, aby wybrać istniejącego pacjenta.
 - W oknie dialogowym Lista pacjentów można zarejestrować nowego pacjenta lub edytować informacje o istniejącym pacjencie.

Patient List

Select a patient on the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	8888				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.

4. Kliknij "Rejestruj & Skanuj", aby zakończyć rejestrację przypadku i przejść do skanowania.
 - **Rejestruj:** Zostaniesz przekierowany na stronę główną. Jest to przydatne podczas rejestrowania wielu przypadków.
 - **Rejestruj & Skanuj:** Przejdzie do zakładki Formularz w celu zarejestrowania formularza informacji dla danego przypadku.

Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Wprowadź lub wybierz nazwę kliniki.
3. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę przypadku. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.
4. Wpisz przewidywany termin dostawy z uwzględnieniem terminu zakończenia prac.
5. Po zarejestrowaniu przypadku zostaniesz przekierowany na stronę główną.

Edycja przypadków

Edycja przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Kliknij ikonę "Szukaj", aby zmienić nazwisko pacjenta. Należy pamiętać, że nie można go edytować bezpośrednio; zamiast tego należy znaleźć nazwę pacjenta, którą chce się zastąpić aktualną i można edytować informacje o pacjencie z listy.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Zaznacz nazwisko pacjenta, którym chcesz zastąpić obecne.
4. Aby utworzyć nowego pacjenta, należy nacisnąć przycisk "Nowy pacjent".
5. Za pomocą przycisku "Edytuj" można zmienić zarejestrowane informacje o pacjencie.
6. Kliknij "Zastosuj", aby zakończyć proces.

Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel
Apply

- Kliknij "Zastosuj" po zakończeniu edycji.

Uwaga

Nie możesz edytować informacji o przypadkach otrzymanych poprzez zamówienie w In Box.

Klonowanie przypadków

Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)

- Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



- Zostaniesz zapytany, jakie informacje chciałbyś sklonować do nowego przypadku.

Information

i
Select a clone type.

Cancel
Form Data Only
All Data

- Wybierz, czy chcesz powielić tylko formularz informacji, czy wszystkie dane.
- Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".

Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)

- Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



- Powiel wszystkie dane, aby stworzyć nowy przypadek.
- Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".


Usuwanie przypadku

Usuń przypadek (klinika i laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Usuń".



2. Kliknij "OK", aby usunąć przypadek.

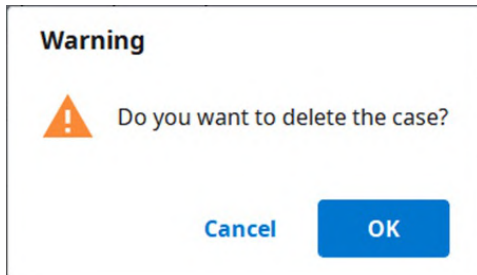

3. Usunięte przypadki są przenoszone do kosza i w razie potrzeby można je odzyskać.

Formularz informacji

Możesz wprowadzić formularz informacji w oparciu o podłączony program i typ leczenia.

Wprowadzone informacje posłużą jako podstawowe informacje do pracy na programach skanujących lub CAD oraz do składania zamówień.

Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.

Wprowadź na zakładce Formularz

1. Wybierz, czy informacje o leczeniu mają być wprowadzane według zębów czy według łuków.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście zamówień.
3. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.

Wprowadź na zakładce Formularz


1. Wybierz program do skanowania, którego chcesz użyć.
2. Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania: Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody mogą się różnić w zależności od wybranego programu skanowania.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zęby	☐	☐
Łuk	☐	☐
Elastyczny multi-die	☒	☐
Multi-die	☒	☐

4. Wybierz numery zębów, łuków lub matryc do procesu skanowania.
5. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście.
6. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Łączenie zębów do mostu

Można połączyć wiele zębów w most, gdy ten sam materiał zostanie nałożony na wiele sąsiednich zębów. Kliknij ikonę mostu obok wybranych zębów, aby je połączyć lub rozłączyć.

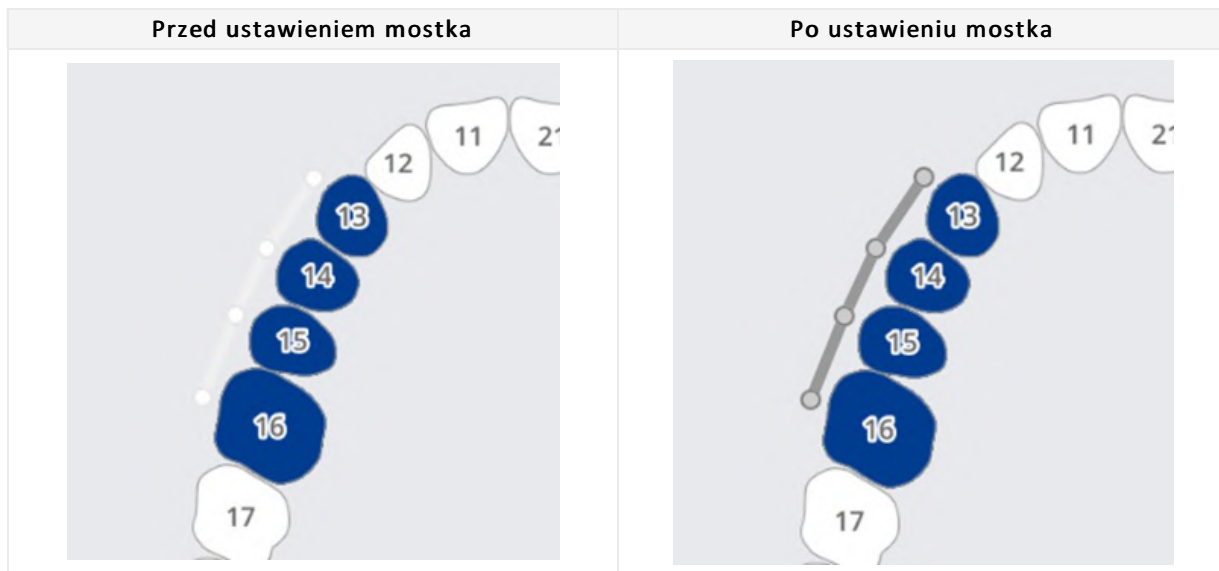

Ustawianie opcji skanowania

W zależności od programu, z którym pracujesz, dostępne są różne opcje skanowania.

Wybrane opcje skanowania są przekazywane do każdego programu skanującego.

Medit Scan for Labs

Ogólne opcje

	Przylegające zęby	Oznacz zęby przygotowane i przylegające, a następnie przekazać te informacje do programu skanującego.
	Przeciwległy	Automatycznie oznacza przeciwległe i przekazuje tę informację do programu skanującego.
	Artykulator	Wyświetlanie opcji wyboru artykulatora w programie do skanowania.
	Znacznik ruchu	Zezwól na użycie strategii skanowania "Ruch szczęki" w programie skanującym.

Opcje według zębów

	Zeskanowany model	Zezwól na ustawienie strategii skanowania organów w programie skanującym.
	Skan przedoperacyjny	Zezwól na ustawienie strategii skanowania modelu przedoperacyjnego w programie skanującym.
	Skanowanie Wax-Up	Zezwól na ustawienie strategii skanowania wax-upów w programie skanującym.

Dodawanie do ulubionych

Możesz szybko wybrać produkt, rejestrując go jako ulubiony.

Lista zarejestrowanych ulubionych jest zarządzana jako szablon i może być udostępniana poprzez funkcje eksportu i importu.

Dodaj do ulubionych

1. Wybierz numer zęba.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Typ - Metoda - Materiał - Odcienie mogą być zarejestrowane jako ulubione, nawet jeśli nie wszystkie są wybrane.
3. Kliknij ikonę "Gwiazda".

4. Kombinacja wybranych parametrów, z wyłączeniem numeru zęba, znajduje się na liście ulubionych wyszukiwań.

Zarządzaj ulubionymi szablonami

Możesz rejestrować, zarządzać i udostępniać różne typy szablonów.

Dodaj	Dodaj nowy szablon.
Zmień nazwę	Zmień nazwę bieżącego szablonu.
Usuń	Usuń bieżący szablon.
Eksportuj	Eksportuj bieżący szablon do pliku.
Importuj	Importuj plik szablonu.

Praca nad Skanowaniem/CAD

Proces skanowania

Na podstawie wprowadzonych informacji przystępujesz do skanowania.

1. Wprowadź/zapisz informacje o leczeniu i wybierz niezbędne opcje skanowania.
2. Kliknij przycisk "Skanuj" w prawym górnym rogu okna.

Proces CAD

Medit Link zapewnia aplikację integracyjną DentalCAD do połączenia Medit Link z DentalCAD.

1. Zainstaluj aplikację DentalCAD Integration w App Box.
2. Przejdź do szczegółów przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration w Szybkim uruchamianiu.
3. Określ ścieżkę do aplikacji DentalCAD zainstalowanej na komputerze w wyskakującym oknie dialogowym.
4. Wprowadź szczegóły zeskanowanego przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego w celu utworzenia pliku dentalProject.
5. Zarejestruj formularz informacji dla DentalCAD i kliknij "Otwórz", aby otworzyć program CAD.
6. Jeśli zainstalujesz aplikację DentalDB Integration, wyniki CAD zostaną automatycznie dostarczone do określonej ścieżki zapisu w exocad. (tylko konta laboratorium)


Korzystanie z aplikacji Add-in

Dodatek Szybkie uruchamianie

Możesz bezpośrednio uruchamiać różne aplikacje dodatkowe, klikając ikony zainstalowanych aplikacji w Szybkim uruchamianiu. Kolejność ikon aplikacji można zmieniać, przeciągając je.



Zarządzanie uruchamianiem aplikacji

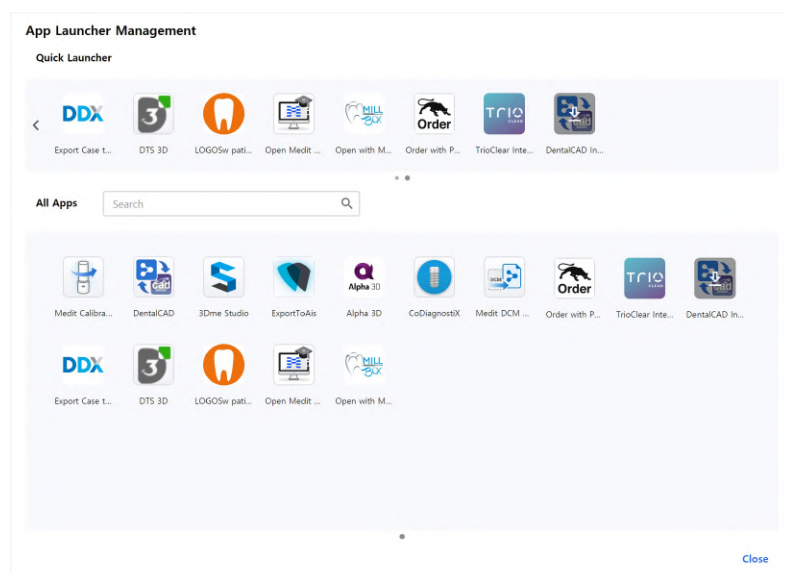

Szybkie uruchamianie

Możesz określić, które aplikacje będą wyświetlane w Szybkim uruchamianiu. Możesz zmienić kolejność ikon aplikacji, przeciągając je, lub utworzyć foldery, aby pogrupować podobne aplikacje w celu ich uporządkowania.

Wszystkie aplikacje

Wyświetlane są wszystkie zainstalowane aplikacje. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji, aby dodać ją do Szybkiego uruchamiania. Z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możesz również wybrać uruchomienie, zainstalowanie lub odinstalowanie aplikacji.

Uzyskaj pliki wyników

Eksportuj pliki z wynikami skanowania

Dodatkowo, oprócz dzielenia się wynikami z partnerami poprzez zamówienia, Medit Link pozwala na przechowywanie plików z wynikami w wybranym formacie za pomocą funkcji eksportu.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

105

Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie mają być przechowywane pliki wyników.
Nazwa folderu	System tworzy nowy folder i przechowuje w nim wszystkie pliki wyników. Domyślna nazwa folderu jest ustawiana przez regułę nazewnictwa. Ale możesz zmienić nazwę folderu bezpośrednio. Możesz zdefiniować regułę nazewnictwa w Ustawienia > Opcje eksportu > Reguły dla nazwy folderu.
Nazwa pliku	Ustaw nazwę pliku dla wyniku. Reguła nazewnictwa ustawia domyślną nazwę pliku. Ale możesz zmienić nazwę pliku bezpośrednio. Możesz określić regułę nazewnictwa poprzez Ustawienia > Opcje eksportowania > Reguły dla nazwy pliku.
Typ	Wybierz program do projektowania, którego chcesz użyć. Medit Link automatycznie dostosuje pliki zgodnie z Twoim wyborem, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez konieczności dodatkowego dopasowywania osi.
Format siatki	Określ format pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja plików	Kompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku.
Połącz indywidualną siatkę	Połącz wynik szczęki lub żuchwy z indywidualnym zębem. Jest to przydatne, gdy import kilku plików do programu nie jest możliwy.
Eksportuj wszystkie relacje okluzyjne	Kiedy wiele wyników okluzji jest generowanych z aplikacji skanującej, można wyeksportować wszystkie wyniki okluzji jednocześnie.
Zapisz informacje o przypadku w formacie PDF	Zapisz informacje o przypadkach jako PDF z wynikiem.

Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków

Możesz eksportować pliki wyników przypadku lub wielu przypadków jednocześnie za pomocą opcji "Eksportuj" znajdującej się nad listą przypadków w Case Box i Work Box.

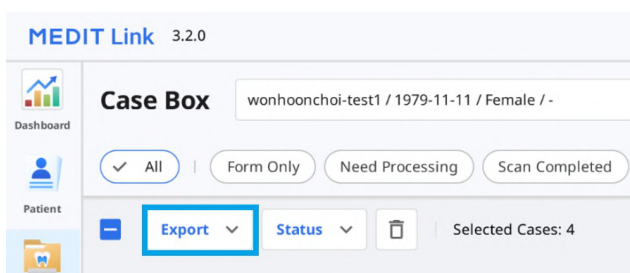

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Wybierz z listy wszystkie przypadki, których pliki wyników chcesz wyeksportować.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 ☐ **Status** ▾ |
 ☐ **Selected Cases: 4**

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Kliknij "Eksportuj" i wybierz "Pliki wyników".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Ustaw folder docelowy, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit ▾

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close **Export**

Uwaga

Pola "Nazwa folderu" i "Nazwa pliku" nie są edytowalne podczas eksportowania plików dla wielu przypadków.

Nazwa folderu i nazwa pliku są tworzone automatycznie zgodnie z regułami ustawionymi dla opcji "Reguła dla nazwy folderu" i "Reguła dla nazwy pliku" w Ustawienia > Opcje eksportowania.

5. Kliknij "Eksportuj".
6. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.


Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików

Możesz wyeksportować pliki wyników skanowania dla przypadku za pomocą ikony "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.

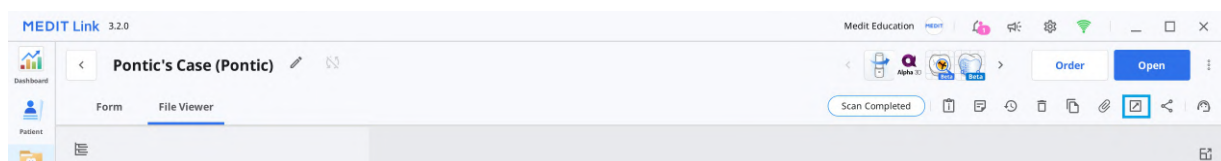

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.



4. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files


☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close **Export**

5. W zakładce "Lista plików" możesz wybrać wymagane pliki dla przypadku, odznaczając niepotrzebne.

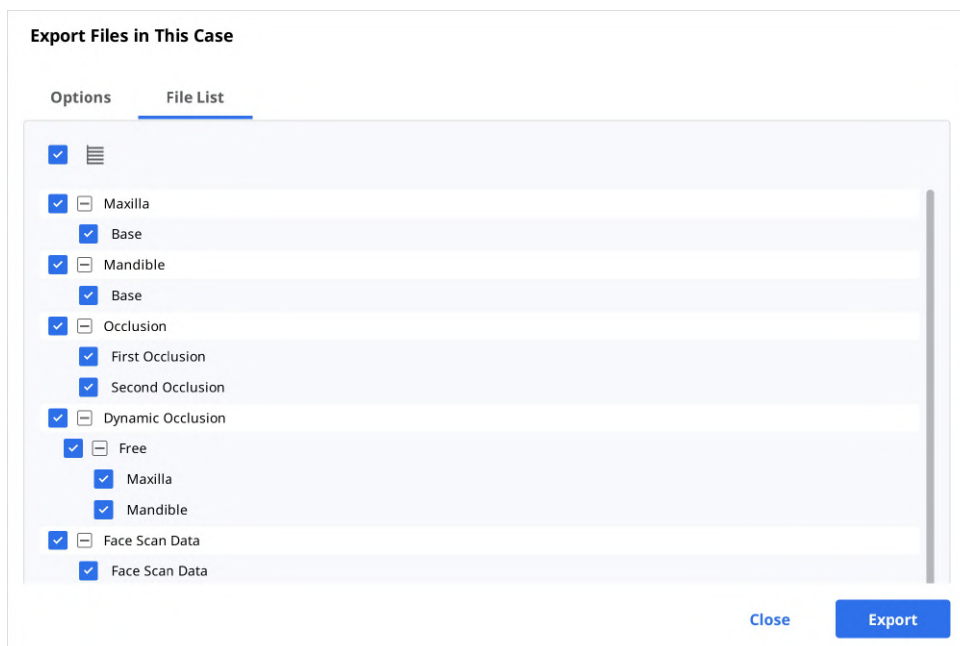


6. Kliknij "Eksportuj".
7. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

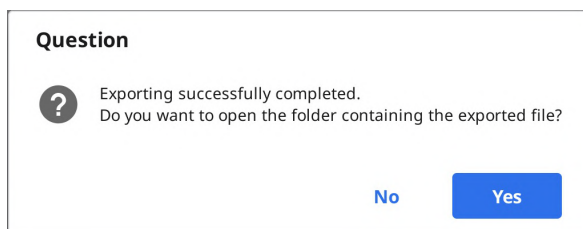


Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych

Możesz wyeksportować plik lub pliki w określonej grupie danych z rozwiniętego menu w przeglądarce plików.

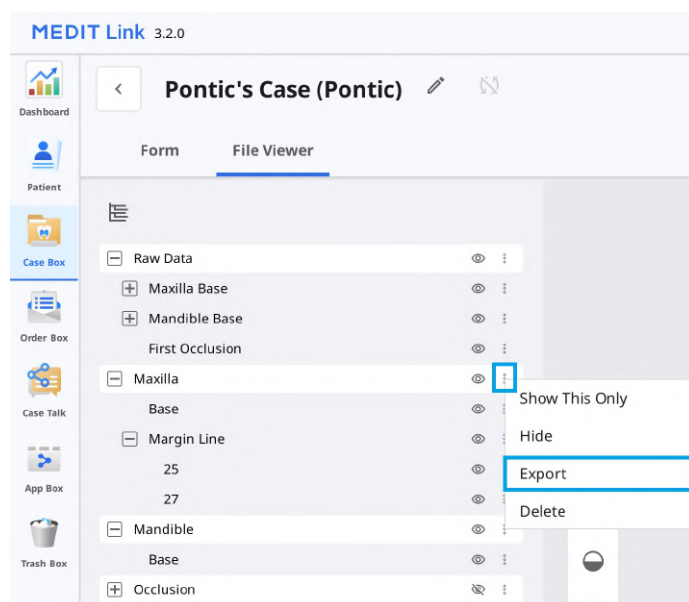

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę trzech kropek obok grupy danych lub podmiotu w drzewie danych w zakładce Przeglądarka plików.

4. Następnie kliknij "Eksportuj".

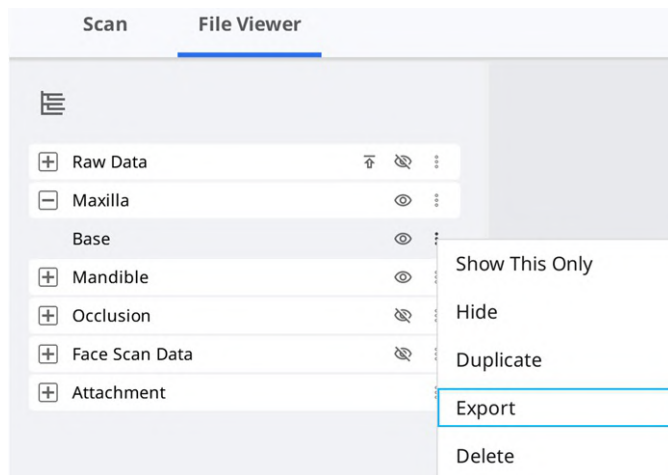

5. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

6. Możesz zobaczyć, że tylko pliki wybrane w drzewie danych są zaznaczone na Liście plików.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close **Export**

- Kliknij "Eksportuj".
- Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Eksportuj listę przypadków jako CSV

Medit Link udostępnia funkcję eksportu listy przypadków w formacie CSV.

Możesz eksportować listę przypadków z podstawowymi informacjami i łatwo zarządzać przypadkami.

- Przejdź do Case Box, Order Box, In Box lub Work Box.
- Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
☒ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
☒ Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

- Kliknij "Eksportuj" i wybierz "Lista przypadków (jak pokazano)" lub "Lista przypadków (ze wszystkimi pozycjami)".

Export **Status**

Result Files

☒ **Case List (as shown)**

☐ **Case List (with all items)**

Uwaga

Lista przypadków (jak pokazano): Eksport listy przypadków z aktualnie wyświetlanymi elementami na ekranie. Przejdź do Przeglądaj opcje > Pozycje tabeli, aby wyświetlić lub ukryć pozycje według własnego uznania.

Lista przypadków (ze wszystkimi pozycjami): Eksport listy przypadków ze wszystkimi pozycjami, w tym Status, Nazwa przypadku, Data urodzenia, Formularz informacji, Data ostatniej modyfikacji, Data skanowania, Data zamówienia i Nazwa laboratorium.

4. Zdefiniuj ścieżkę i nazwę pliku, a następnie zapisz listę.
5. Lista przypadków jest zapisywana jako plik CSV.


Eksport linii brzegowej

Medit Scan for Clinics zapewnia funkcję tworzenia linii brzegowej, a Medit Link może przenieść linię brzegową do programu CAD.

Eksportuj linię brzegową jako kolor

Ogólnie rzecz biorąc, Medit Link konwertuje linię brzegową jako kolor i eksportuje wynik ze szczęką lub zuchwą razem. Możesz utworzyć linię brzegową w programie cad, odwołując się do informacji o kolorze.

Przykład:

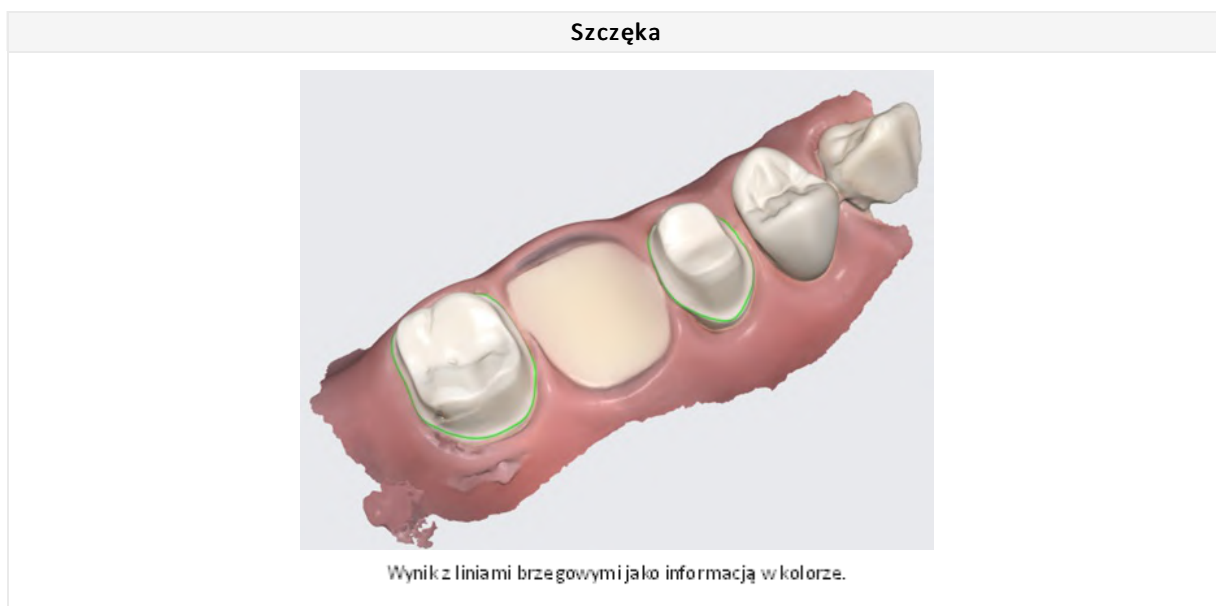

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna dla formatów zawierających informacje o kolorze, takich jak meditMesh, OBJ i PLY. Linia brzegowa nie konwertuje się do STL.

Uwaga


Typ > 3Shape nie obsługuje tej funkcji.

Eksportuj linię brzegową jako plik

W przypadku programu Exocad, Medit Link eksportuje linię brzegową do pliku "~margin.xyz", który można zaimportować bezpośrednio do programu Exocad.

Możesz użyć tego pliku w exocad bez dodatkowej pracy.

Przykład:

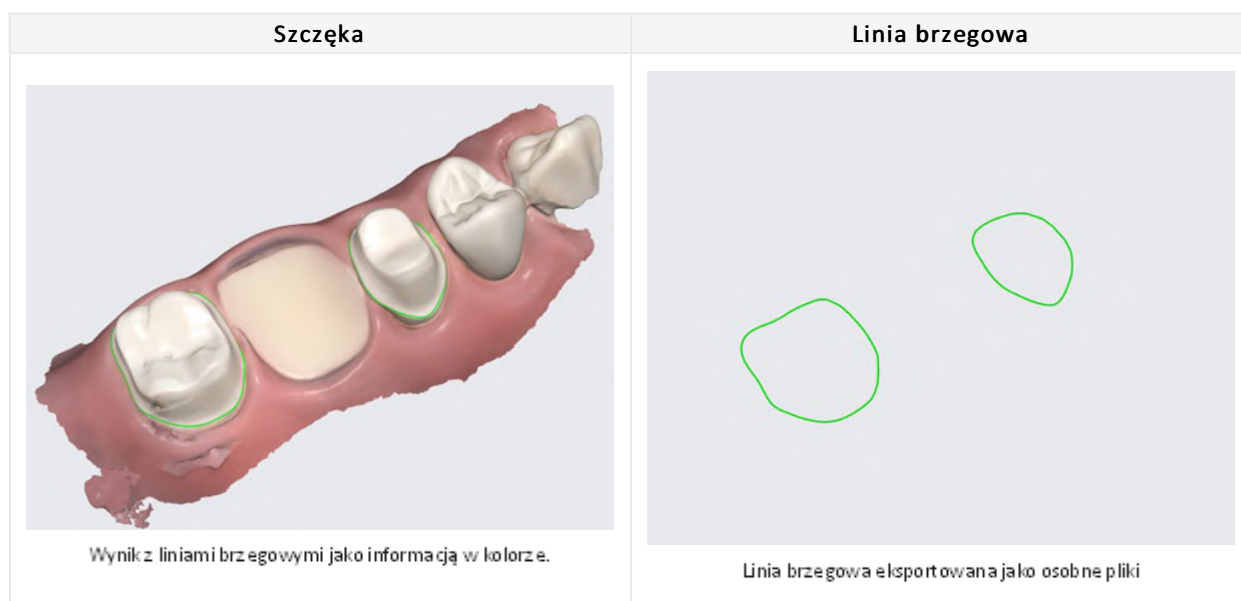

Pobierz pliki z Medit Link Web

Medit Link udostępnia funkcję pobierania plików.

Jeśli chcesz uzyskać pliki wynikowe bez instalowania aplikacji Medit Link, możesz pobrać pliki z serwisu internetowego Medit Link.

Uwaga


Dane należy wgrać do Medit Cloud, aby pobrać pliki z sieci.

Funkcja pobierania jest dostępna w poniższym menu serwisu internetowego Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


W prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Pobierz".

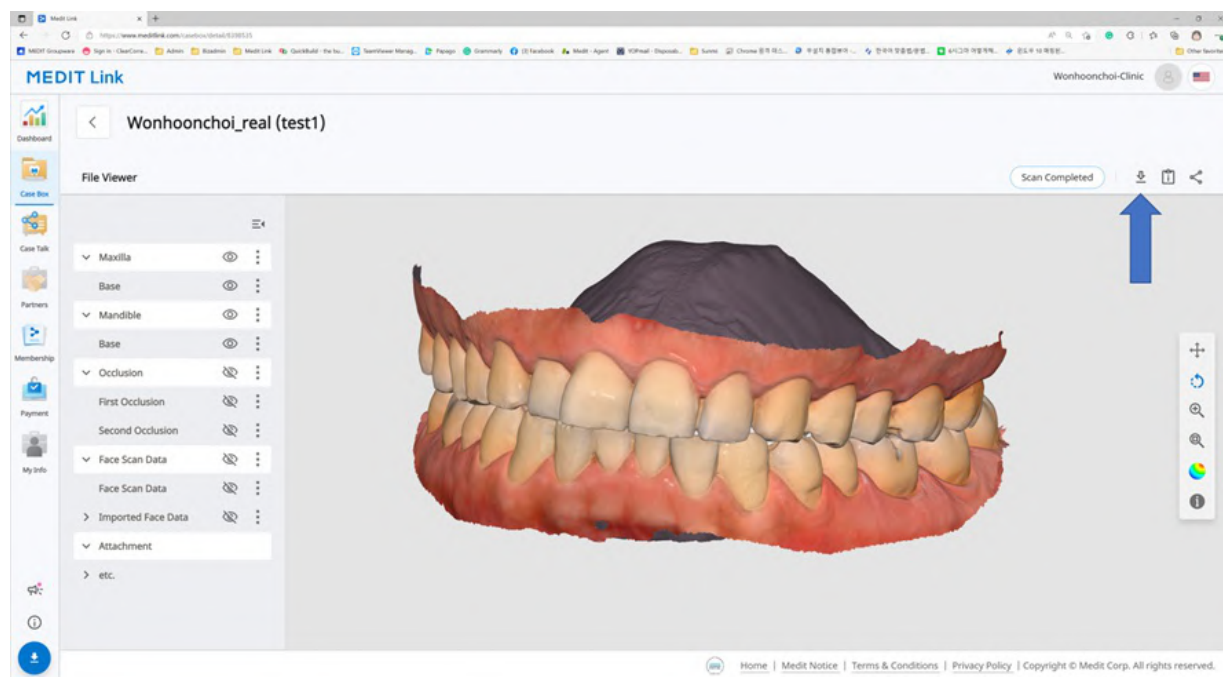


Web Viewer

Gdy udostępniasz przypadek za pomocą Case Talk, możesz ustawić, czy zezwolić na pobieranie, czy nie.

Jeśli zaznaczysz "Udzielenie pozwolenia na pobranie" i udostępnisz przypadek, wszyscy użytkownicy, którzy połączą się z udostępnionym linkiem, mogą pobrać pliki.

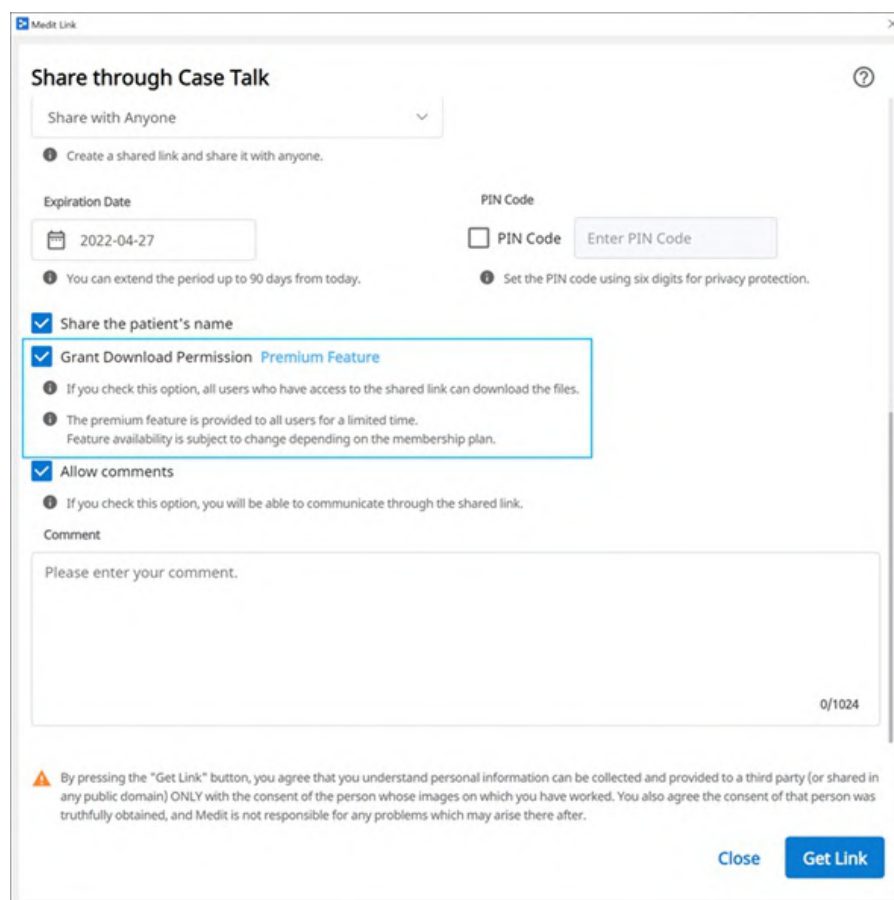


W przeglądarce internetowej w prawym górnym rogu znajduje się ikona "Pobierz".

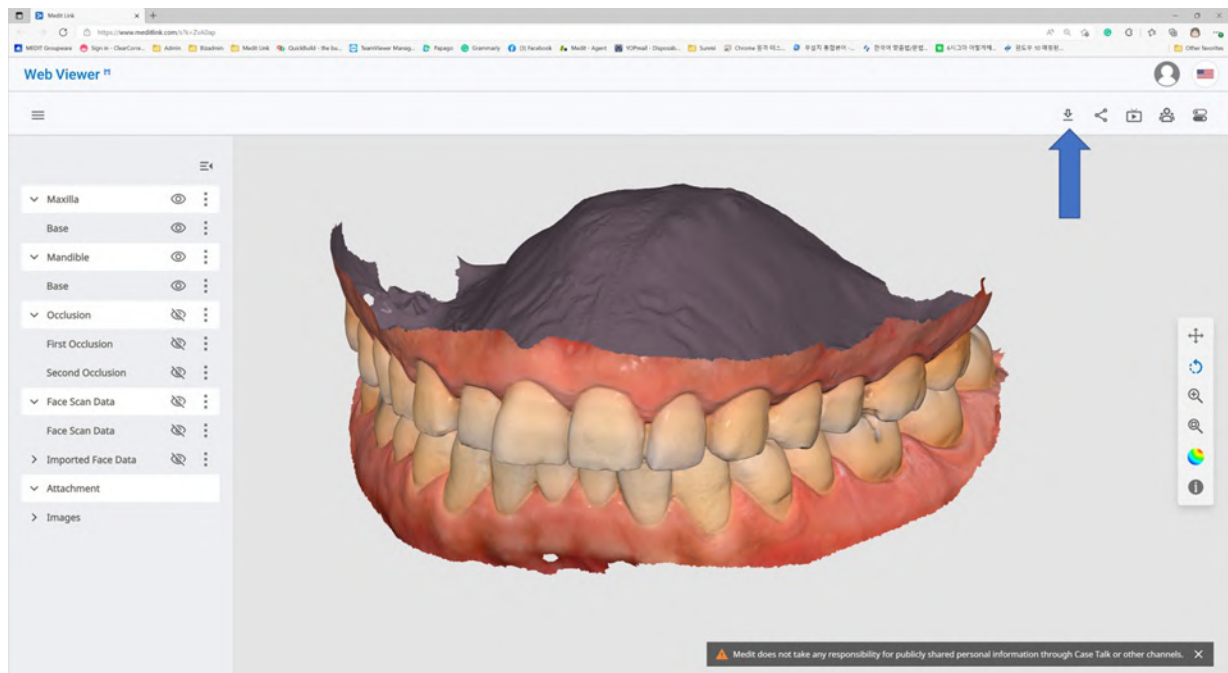

1. Kliknij "Pobierz".



2. Wybierz format siatki w oknie dialogowym pobierania.

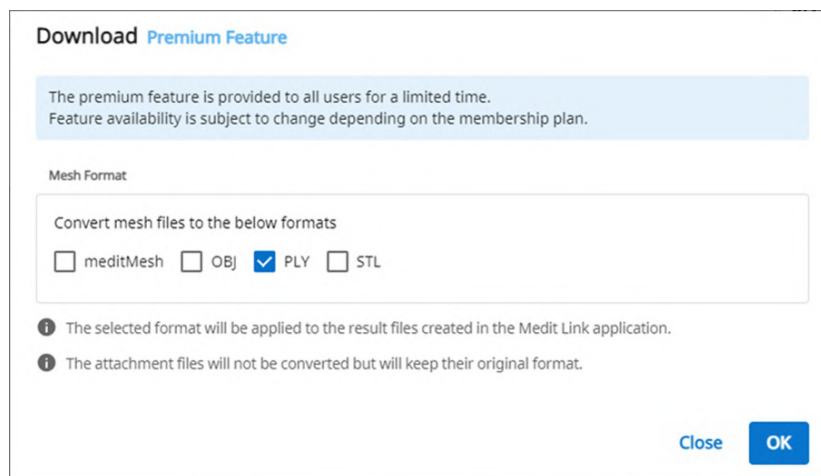

3. Następnie kliknij "OK".

Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami

W prosty sposób można zamówić przypadek z danymi pozyskanymi z połączonych programów i dołączonymi przez użytkownika.

Zamawianie przypadków

Możesz złożyć zamówienie dla swoich partnerów w Case Box.

1. Kliknij przycisk "Zamów".
2. Sprawdź informacje wymagane dla Twojego zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Wybierz partnera.
4. Sprawdź informacje o produkcie z zakładki Lista zamówień.
 - Możesz zdecydować, czy udostępnić nazwisko pacjenta.
5. Zaznacz pliki do zamówienia z zakładki Lista plików.
6. Wprowadź pożądaną datę dostawy.
 - Domyślnie ustawiona jest wartość 7 dni od daty zamówienia.
7. Możesz dodać notatkę i tagi dla swojego partnera, aby nakreślić konkretne szczegóły.
8. Kiedy z aplikacji skanującej generowanych jest wiele wyników okluzyjnych, możesz wysłać wszystkie wyniki okluzyjne jednocześnie, zaznaczając opcję "Zamów Uporządkuj wszystkie relacje okluzyjne".
9. Kontynuuj swoje zamówienie.

Potwierdź zamówienie (In Box)

- Zaakceptuj zamówienie po jego otrzymaniu.
- Zaakceptowane zamówienia zostaną przekazane do Work Box.

Anuluj zamówienie (Order Box)

- Możesz anulować zamówienie zanim Twój partner je zaakceptuje.
- Anulowane przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

Odrzucenie zamówienia (In Box)

- Możesz odrzucić otrzymane zamówienie.
- Odrzucone przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

Sprawdzanie zamówionych przypadków

Możesz sprawdzić szczegóły zamówionego przypadku w Order Box na koncie kliniki. Możesz również sprawdzić przypadek, który otrzymałeś z In Box na koncie laboratorium.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informacje o zamówieniu	Informacje, które mogą być zawarte w zamówieniu, są następujące: ID zamówienia/nazwa pacjenta/nazwa konta/data skanowania/data zamówienia/data dostarczenia/data wymagalności dostawy/notatka. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące zamówionego produktu i informacje o dostawie.
Lista zamówień	Na liście zamówień wyświetlane są szczegóły dotyczące zamówionego produktu.
Wysyłka	Wprowadź/sprawdź informacje dotyczące wysyłki.

Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)

Wprowadź informacje o wysyłce zakończonego przypadku i rozpocznij wysyłkę.

1. Kliknij zakładkę Przesyłka.
2. Wprowadź informacje o przesyłce i kliknij "Zarejestruj".

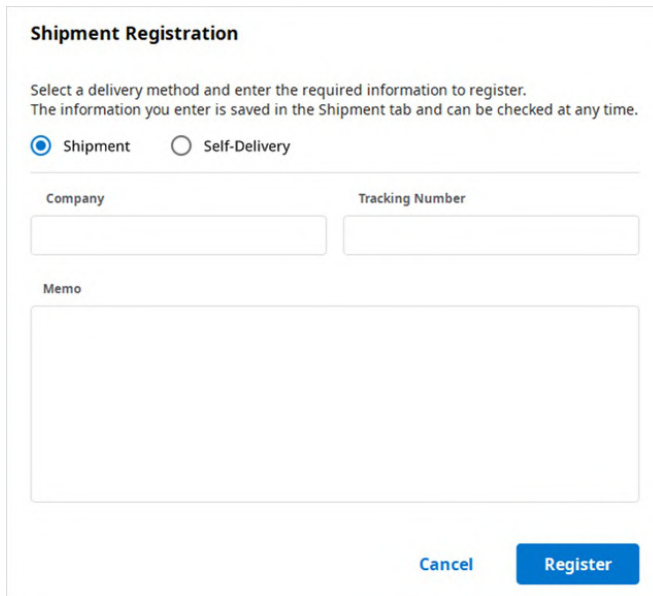

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Wprowadzone informacje są wysyłane do partnera.

Zarządzanie terminem dostawy

Możesz ustawić oczekiwaną datę dostawy podczas składania zamówienia, a informacja ta zostanie przekazana Twojemu partnerowi.

Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)

- Przy zamówieniu w Case Box można wpisać wnioskowany termin dostawy.

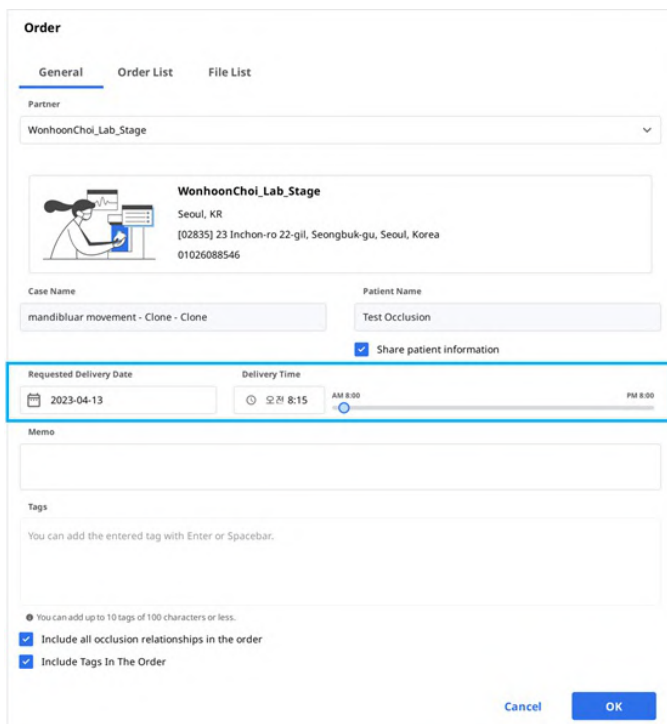

Order

General Order List File List

Partner WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name mandibular movement - Clone - Clone Patient Name Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date 2023-04-13 Delivery Time 오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Domyślna wartość to 7 dni od daty złożenia zamówienia.
- Wpisz datę/godzinę, w której chcesz otrzymać produkty i przejdź do zamówienia.
- Możesz łatwo ustawić czas za pomocą suwaka.

Ustawianie przewidywanej daty dostawy (konto laboratorium)

- Możesz wprowadzić przewidywaną datę dostawy dla przypadku zamówionego w In Box.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 10:56 Order Date: 2022-09-29 10:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01 10:30

Memo: <Scanbody Library> 16: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 15: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 14: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Sprawdź wnioskowany termin dostawy z partnerem i zmień termin za pomocą przycisku "Edytuj".



2. Wprowadź przewidywaną datę dostawy biorąc pod uwagę faktyczny dzień roboczy. W razie potrzeby możesz też zostawić komentarz.
3. Kliknij "Zastosuj".

March 2022

17

Delivery Time: 11:45 AM

Comment:

Cancel Apply

4. Przewidywany termin dostawy oraz notatka zostaną przekazane wraz z zamówieniem.
 - Możesz sprawdzić datę i notatki w Order Box.
 - Możesz zmienić przewidywaną datę dostawy, a zmiany zostaną przekazane Twojemu partnerowi.
5. Możesz sprawdzić historię przypadków za pomocą przycisku "Historia".



Zakończenie przypadku

Zakończ (Work Box/In Box)


Gdy wszystkie zadania zostaną wykonane, kliknij "Gotowe", aby zakończyć przypadek.

Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku

Możesz znaleźć ikonę trzech kropek po prawej stronie od przycisku "Otwórz" lub "Skanuj ponownie".



Zakończ pracę, klikając ikonę i wybierając "Done".

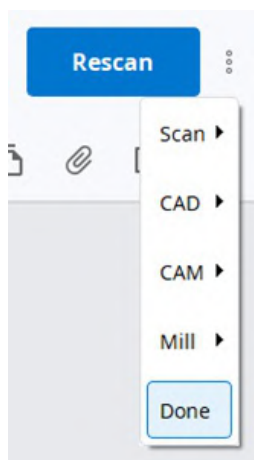

Zakończ wiele przypadków z listy przypadków

1. Przejdź do Work Box.
2. Wybierz wszystkie przypadki do zakończenia.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export ▾ Status ▾ Selected Cases: 4

Done

	Status	Case Name	Patient Name	Form Information
☒	Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
☒	Form Only	test's Case	test	-
☒	CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
☒	CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Kliknij "Status" i wybierz "Done".

Zakończ (Case Box/Order Box)

Po zakończeniu przypadku po stronie laboratorium, klinika musi potwierdzić przypadek, aby zakończyć cały proces zamówienia.

Klinika może znaleźć przycisk "Potwierdź dostarczenie" w Order Box, jeśli laboratorium zakończy swoją pracę.


Kliknij to, cały proces zamówienia zostanie zakończony, a status przypadku zostanie zmieniony na "Case Completed".

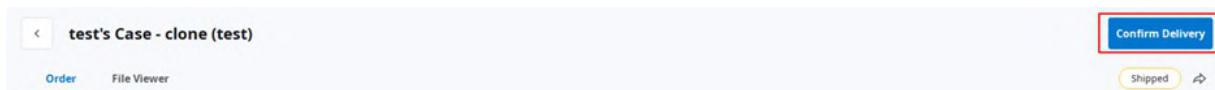

Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.

Dla przypadków, które nie zostały zamówione do Laboratorium, możesz zakończyć je w Case Box.

1. Przejdź do Case Box.
2. Wybierz przypadek, który chcesz zakończyć.

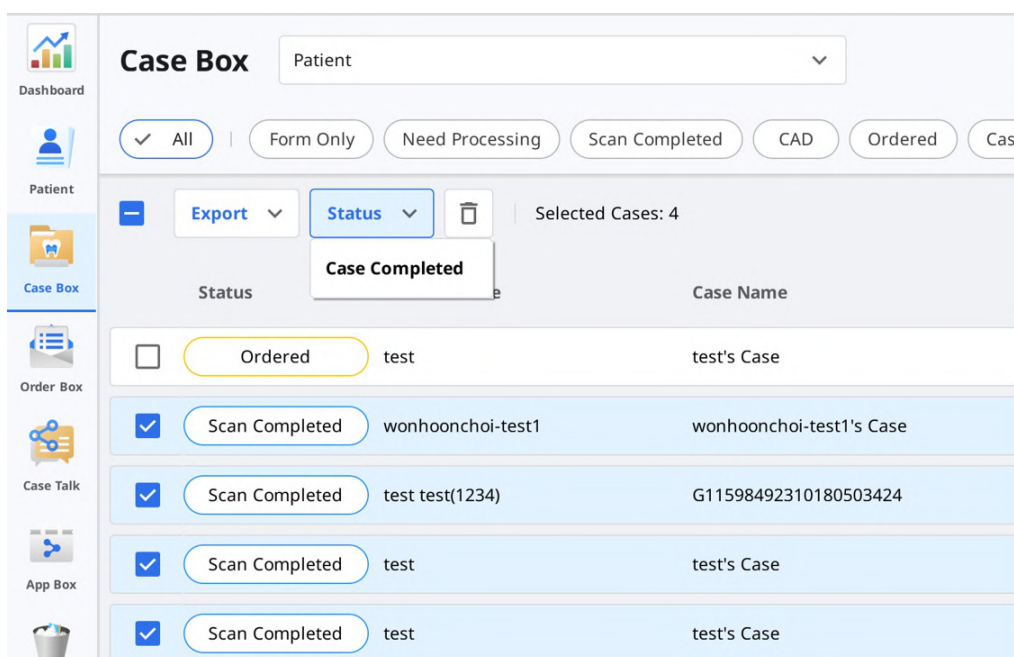

3. Kliknij "Status" i wybierz "Case Completed".

Komunikuj się za pomocą tagów

Możesz dodać dodatkowe informacje dotyczące przypadku za pomocą tagów i wysłać je do swoich partnerów.

Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku

Możesz wprowadzić tagi podczas tworzenia nowego przypadku lub edytowania informacji o nim.

New Case Information

Patient Name*

...

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Możesz łatwo wyszukiwać i wybierać tagi, których używałeś wcześniej.

New Case Information

Patient Name*

...

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Dodaj tagi podczas składania zamówienia

Możesz sprawdzać i edytować tagi w oknie dialogowym Zamówienie podczas składania zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...)

Form File Viewer

Scan Completed

Order Open

Case Box

Raw Data Maxilla Base Mandible Base Occlusion

Case Talk

App Box

Trash Box

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name Worker_Name

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.