

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Giriş	7
Medit Link	7
Hizmete Genel Bakış	7
Cloud Hizmeti	8
Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu	8

Medit Link > Kurulum

Sistem Gereksinimleri	9
Windows için Sistem Gereksinimleri	9
macOS için Sistem Gereksinimleri	9
Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri	9
Tarayıcılar için Öneriler	9
Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler	9
Windows'ta Kurulum	10
macOS'ta Kurulum	13

Medit Link > Başlarken

Kaydol & Giriş Yap	17
Medit Link Websitesi	17
Kaydol	17
Oturum Açma ve Karşılama Sayfası	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
Dashboard'a Genel Bakış	21
Medit Insights	21
Medit Insights'a Abone Olun	22
Medit Insights aboneliğinden çıkma	23
Patient	24
Hasta Arama	24
Case Box/Work Box	25
Vaka Filtreleme	25
Hastaya göre filtreleme	25
Duruma göre filtreleme	26
Süreye göre filtreleme	27
Aramaya göre filtreleme	27
Vaka Detayları	27
Order Box/In Box	29
Sipariş Detayları	29
Order Box/In Box'daki Sekmeler	29
Case Talk	30
Case Talk Oluşturma	30
Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlama	31
Case Talk detayları	33
Web Viewer	33
Ek açıklama	34
Yorumlar	35

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı	36
Veri Ağacı	36
Veri Ağacı Kontrolleri	36
3D Model Kontrolleri	37
Partners	38
Ortak Ara	38
Ortakların Listesi	38
Ortak Daveti	39
Membership	40
Üyelik	40
Plan	40
Cloud Depolaması	41
Abone Ol	41
Abonelikten çık	43
Fatura Bilgisi	44
Ödeme yöntemi nasıl eklenir?	45
Ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?	46
Kullanım Kodu	47
Kullanım Kodunu Kaydet	47
Kullanım Kodunu Etkinleştir	48
My Info	49
Hesabım	49
Kliniğim/Labım (Yalnızca Yönetici Hesabı)	49
Tarayıcım	50
Diğer Menü	51
Bildirimler & Güncelleme	51
İlgili Websiteler	51
Medit Link App'i indirin	51

Medit Link > Medit Link App

Genel Bakış	53
Aşağıdaki tablo, her bir klinik ve laboratuvar hesabı türünde hangi menülerin kullanılabileceğini özetlemektedir.	53
Başlık Çubuğu	54
Bilgilerim	54
Bildirimler	54
Bildirim & Güncelleme	55
Ayarlar	55
Ağ Durumu	56
Ayarlar	58
Genel	58
Depolama Yönetimi	59
Periyodu Ayarla	60
Yerel Depolama	60
Cloud Depolaması	60
Bağlı Programı Ayarla	61
Dışa Aktarma Seçenekleri	61
Vaka Dönüştürme Aracı	63
Vakaları Dışa Aktarma	64
Vakaları İçer Aktarma	65
Proxy Seçenekleri	66
Hakkında	67
Kullanıcı Kılavuzu	67
Menü	68

Dashboard	68
Patient	68
Yeni Hasta Ekle	69
Hastayı Sil	69
Hastaları Birleştir	69
Case Box/Work Box	70
Case Box/Work Box'daki Sekmeler	70
Case Box/Work Box'daki İşlevler	71
Order Box/In Box	72
Order Box/In Box'daki Sekmeler	73
Case Talk	73
App Box	74
Hepsi	74
Medit Apps	74
İndirilen	75
Trash Box	75
Vaka Senkronizasyon Yöneticisi	75
Yükle	76
İndir	76
İlgili Websiteler	77
Dosya Görüntüleyici	78
Veri Ağacı	78
Model Kontrol Araçları	78
3D Model Kontrolü	78
2D Görüntü Kontrolü	79
İşlev Araçları	80
Görüntü Yakalama ve Notlar	80
Ortho Capture	80
Boşlukları Doldur	81
Kırpma	81
Oklüzyon Hizalamasını Optimize Et	84
Mandibular Hareket	85
Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme	86
Birden çok sonuç nasıl yönetilir?	86
Görüntüleme Seçenekleri	88
Durum Filtreleri	88
Görünüm Türü	89
Gruplama	89
Sıralama	89
Filtreleme ve Arama	91
Hastaya Göre Filtreleme	91
Tarihe Göre Filtreleme	92
Gelişmiş Arama Özellikleri	92

Medit Link > İş Akışı

Vaka Oluşturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme	94
Vakalar Oluşturma	94
Case Box'da Vaka Oluşturma (Klinik)	94
Work Box'da Vaka Oluşturma (Lab)	95
Vakaları Düzenleme	95
Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)	95
Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)	96
Vakaları Kopyalama	97

Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)	97
Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)	97
Vakayı Silme	98
Vaka Silme (Klinik ve Lab)	98
Form Bilgileri	99
Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme	99
Form Sekmesine Girin	99
Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme	99
Form Sekmesine Girin	99
Dişleri Köprüye Bağlama	99
Tarama Seçeneklerini Ayarlama	100
Medit Scan for Labs	100
Genel seçenekler	100
Dişlere göre seçenekler	100
Favorilere Ekleme	100
Favorilere Ekle	100
Favori Şablonları Yönetme	101
Tarama/CAD üzerinde çalışma	102
Tarama Süreci	102
CAD Süreci	102
Eklenti Uygulamalardan Yararlanma	102
Hızlı Başlatıcı Eklentisi	102
Uygulama Başlatıcı Yönetimi	102
Hızlı Başlatıcı	103
Tüm Uygulamalar	103
Sonuç Dosyalarını Alma	104
Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktar	104
Sonuç Dosyalarını Vaka Listesinden Dışa Aktarma	105
Sonuç Dosyalarını Dosya Görüntüleyiciden Dışa Aktarma	107
Sonuç Dosyalarını Veri Ağacından Dışa Aktarma	108
Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar	110
Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar	111
Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma	111
Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma	111
Medit Link Web'den Dosyaları İndirme	112
Case Box/Work Box	112
Web Viewer	113
Vakaları Sipariş Etme/Yönetme	115
Vaka Sipariş Etme	115
Siparişi Onaylama – (In Box)	115
Siparişi İptal Etme – (Order Box)	116
Siparişi Reddetme (In Box)	116
Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme	116
Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)	116
Teslimat Tarihlerini Yönetme	117
Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)	117
Beklenen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Lab hesabı)	117
Vaka Tamamlama	118
Tamamlama (Work Box/In Box)	119
Vaka detaylarından bir vakayı tamamlama	119
Vaka listesinden birden çok vakayı tamamlama	119
Tamamlama (Case Box/Order Box)	119
Case Box'da sipariş edilmemiş bir vakayı tamamlama	120

Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma	121
Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme	121
Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme	122
Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme	122

Giriş

Medit Link

Medit Link, her bir taraf için optimize edilmiş bir iş akışı sağlamak amacıyla klinikler ve laboratuvarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, işbirliğine dayalı bir araçtır.

Her hesabın türüne ve izinlerine göre farklı özellikler sunar. Program, oral ve model tarayıcılarla taramadan, vaka sipariş etmeye ve protez tasarlamaya ve üretmeye kadar iş akışını yönetmek için kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Medit Link, bir web hizmeti ve bir bilgisayar uygulamasından oluşur.

Hizmete Genel Bakış

		Web	App
		- Hesabı kaydetme ve yönetme - Ortakları arama ve yönetme - Paylaşılabilir bir bağlantıyla Web Viewer aracılığıyla vakaları paylaşma - Uygulamadan oluşturulan vakalara erişme - Siparişleri yönetme	- Form bilgilerinin girilmesi - Tarama - Siparişleri yönetme - CAD ile bağlantı - Hasta yönetimi
Klinik	Admin	Ortaklarınızı ve kliniklerinizi arayın ve yönetin, vakaları paylaşın. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Form bilgilerini girin, tarayın, sipariş verin ve hastaları yönetin. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
Lab	Admin	Ortakları ve laboratuvarınızı arayın ve yönetin, vakaları paylaşın. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Form bilgilerini girin, tarayın ve siparişleri yönetin. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Cloud Hizmeti

Medit Link, AWS (Amazon Web Services) aracılığıyla veritabanı ve dosyaların otomatik olarak yüklenmesini/indirilmesini destekler.

Cloudda depolanan veriler, kuruluştaki birden fazla kullanıcının bilgisayarlarıyla otomatik olarak senkronize edilir, böylece aynı verilere herhangi bir bilgisayardan herhangi bir zamanda erişebilirler. Cloud tabanlı yedekleme ve kurtarma, tüm verilerinizi güvende tutar. Ani bilgisayar arızası nedeniyle veri kaybı durumunda bile verilerinizi güvende tutar.

Cloud hizmeti, ortak dış hekimlerinin ve laboratuvarların, taramaları e-postayla gönderme veya manuel olarak aktarma zahmetine girmeden verileri hızlı bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Hasta bilgileri dahil tüm veriler güvenli bir şekilde şifrelenir, saklanır ve iletilir. Medit, HIPAA ve GDPR gibi tıbbi yasalara ve yönetmeliklere uygundur.

Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu

Medit Link sipariş sistemini sunar.

- Medit Link, kullanıcıların dış hekimleri ve dış laboratuvarları arasında ortaklıklar kurmasına ve verileri hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmasına olanak tanır.
- Sipariş durumunu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri



Tarama yazılımını tarayıcınızla birlikte kullanmak istiyorsanız lütfen Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs için sistem gereksinimlerine bakın.

Windows için Sistem Gereksinimleri

	Laptop & Masaüstü
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz veya üzeri
RAM	16 GB veya üzeri
Ekran	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) veya üstü/veya eşdeğeri AMD ekran kartı
İşletim Sistemi	Windows 10 64 Bit (32 Bit'te mevcut değil) veya üzeri

macOS için Sistem Gereksinimleri

	Mac
İşlemci	8 çekirdekli, 7 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ile M1
RAM	16 GB veya üzeri
İşletim Sistemi	Monterey 12 veya üstü

Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri

Tarayıcılar için Öneriler

	Tarayıcılar
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox

Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler

	Android	iOS
Cihaz	Galaxy S7 eşdeğeri veya üstü	iPhone 7 eşdeğeri veya üstü
İşletim Sistemi	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB veya üzeri	2 GB veya üzeri
AP	Snapdragon 710 üzeri	A10 Fusion


Windows'ta Kurulum

Medit Link, tarama edinme programları olan Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs ile bir paket olarak kurulur.


1. Medit_LinkSetup.exe dosyasını çalıştırın.
2. Kurulum için dili seçin.
3. Medit Link kurulumu için klasörü seçin. Lütfen lisans hüküm ve koşullarını okuyup kabul edin ve "YÜKLE"yi tıklayın.



4. Bir sonraki adıma geçmeden önce tarayıcı kablosunun bilgisayardan çıkarıldığından emin olun. Tarayıcı bilgisayarınıza bağlıysa kurulum devam etmeyebilir.
5. Program otomatik olarak yüklenecektir ve birkaç dakika sürebilir. Kurulum tamamlanana kadar bilgisayarınızı kapatmayın veya fişini çekmeyin.

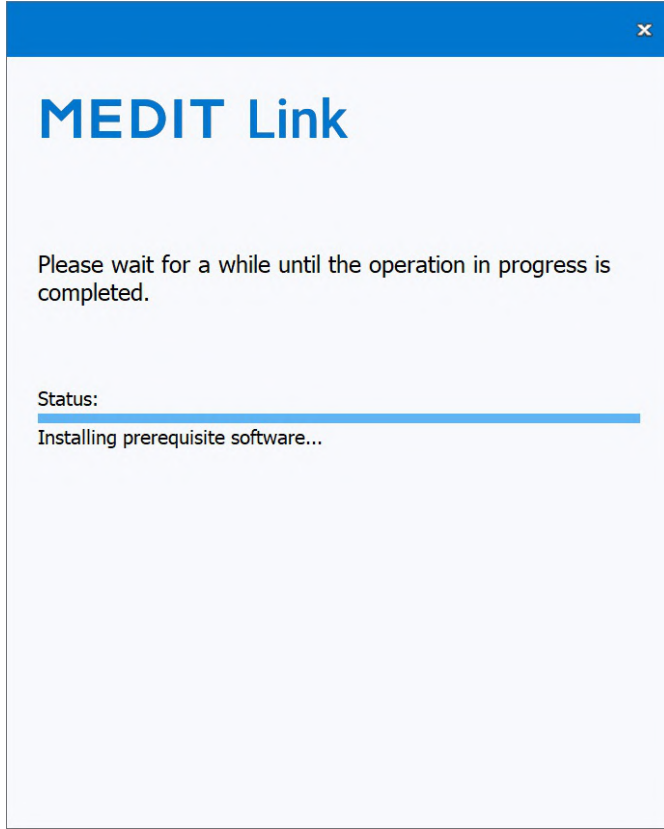

6. Kurulum tamamlandıktan sonra lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tarayıcınız yoksa PC'yi yeniden başlatmadan ilerleyebilirsiniz.

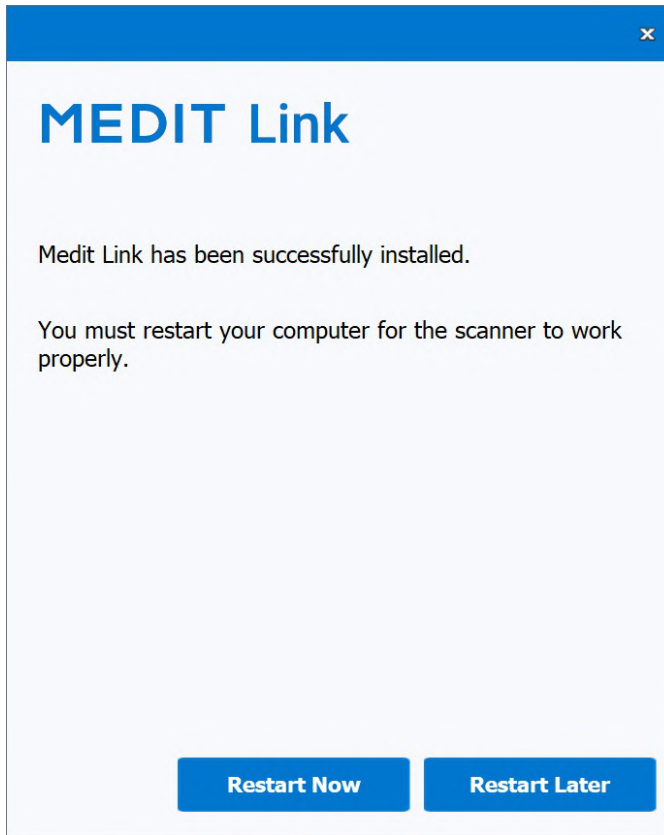


Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız, tarayıcı düzgün çalışmayabilir.


macOS'ta Kurulum

Medit Link, Medit Scan for Clinics ile bir paket olarak kurulur.


1. Medit_Link_x.x.x.pkg dosyasını çalıştırın ve “Devam Et”e tıklayın.

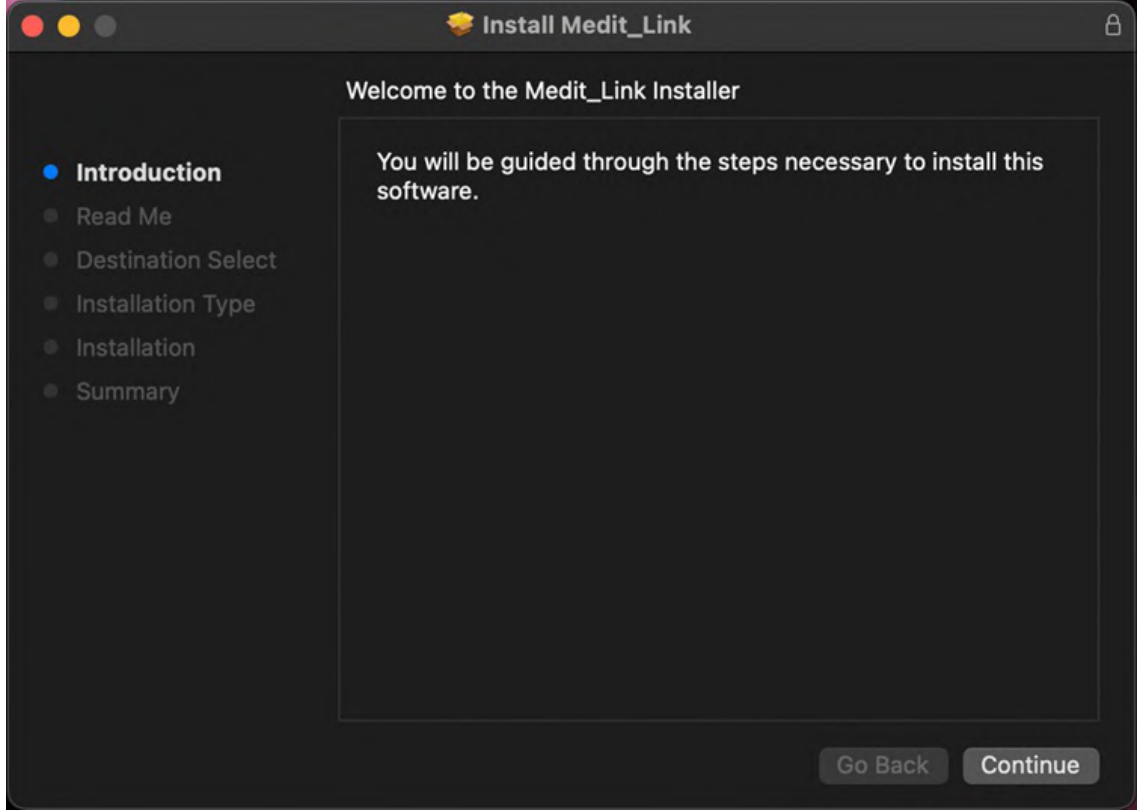


2. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve “Devam Et”e tıklayın.

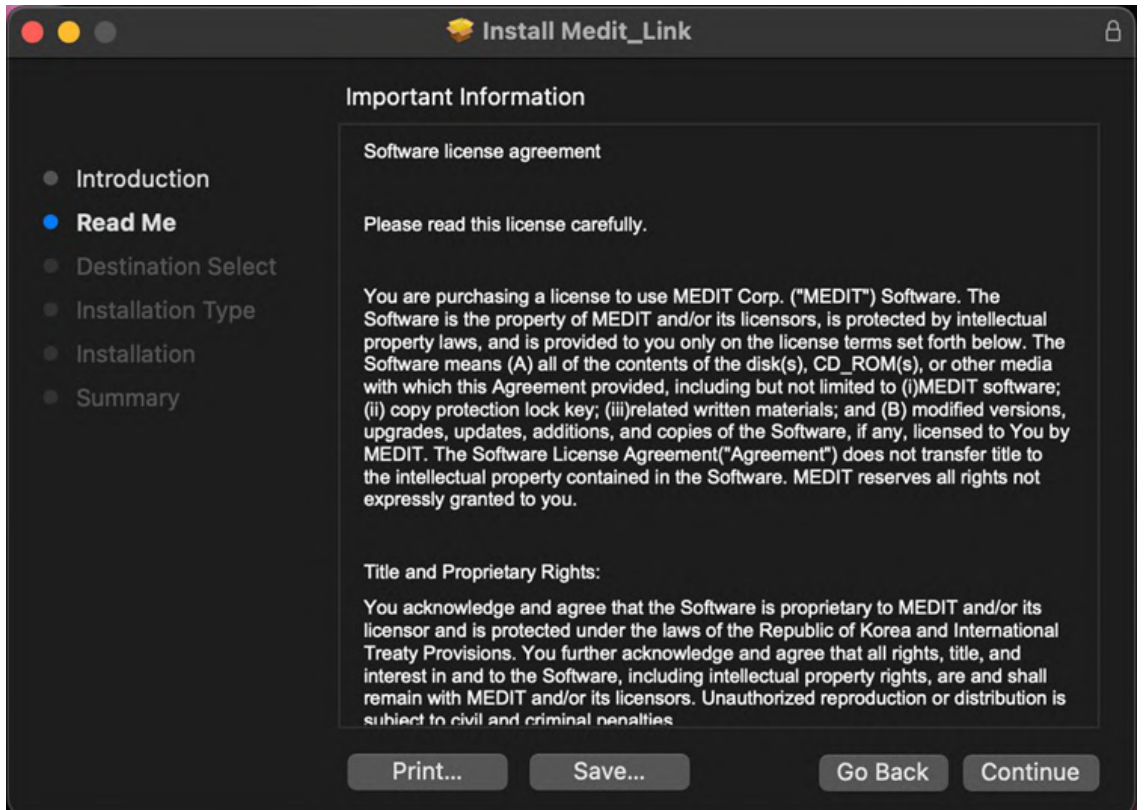


3. Kurulacak diski seçin ve “Devam Et”e tıklayın.

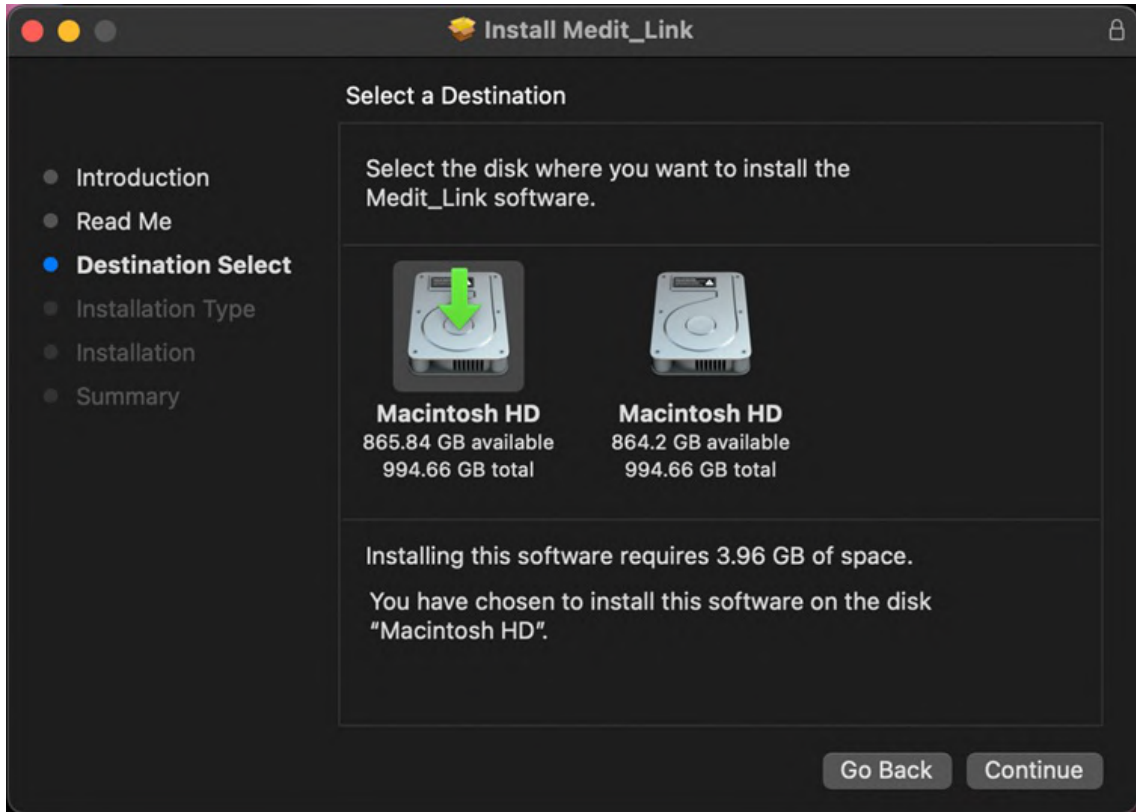


4. Kurulum hedefini değiştirmek için "Yükleme Konumunu Değiştir..."e tıklayın.

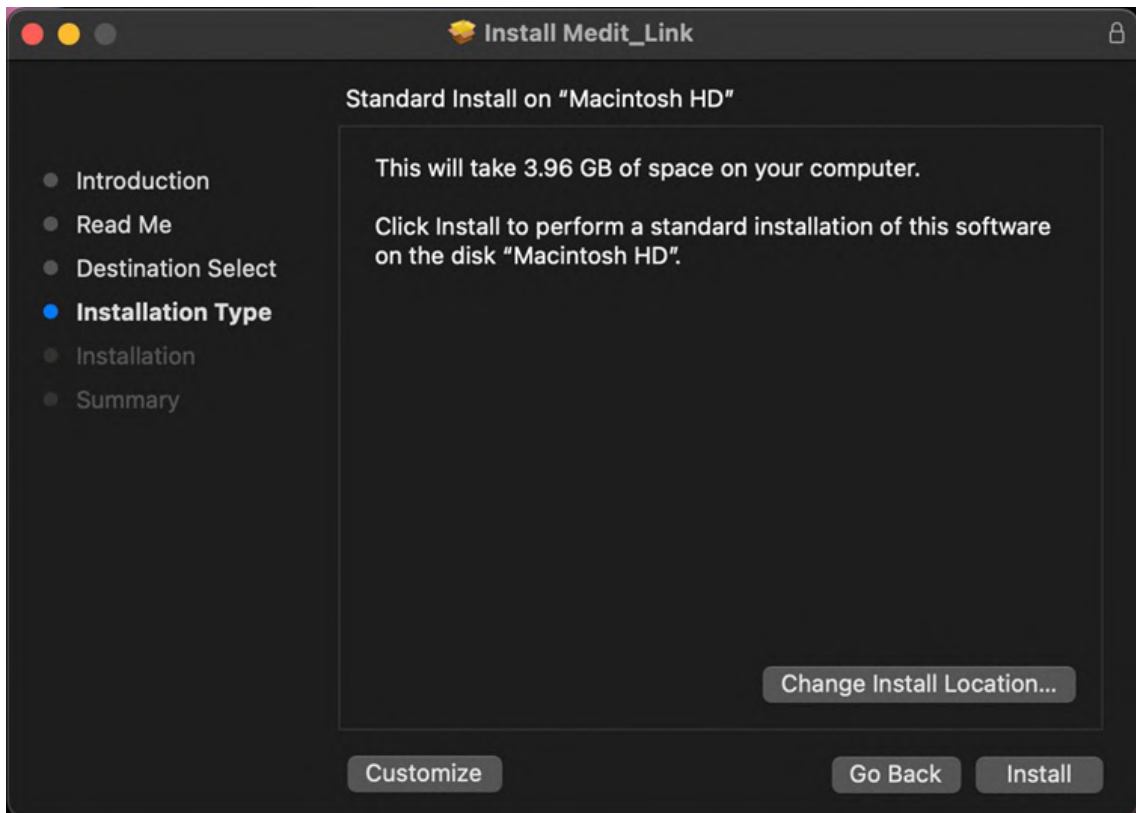


5. "Yükle"ye tıklayın ve istenirse kurulumu izin vermek için Mac şifrenizi yazın.

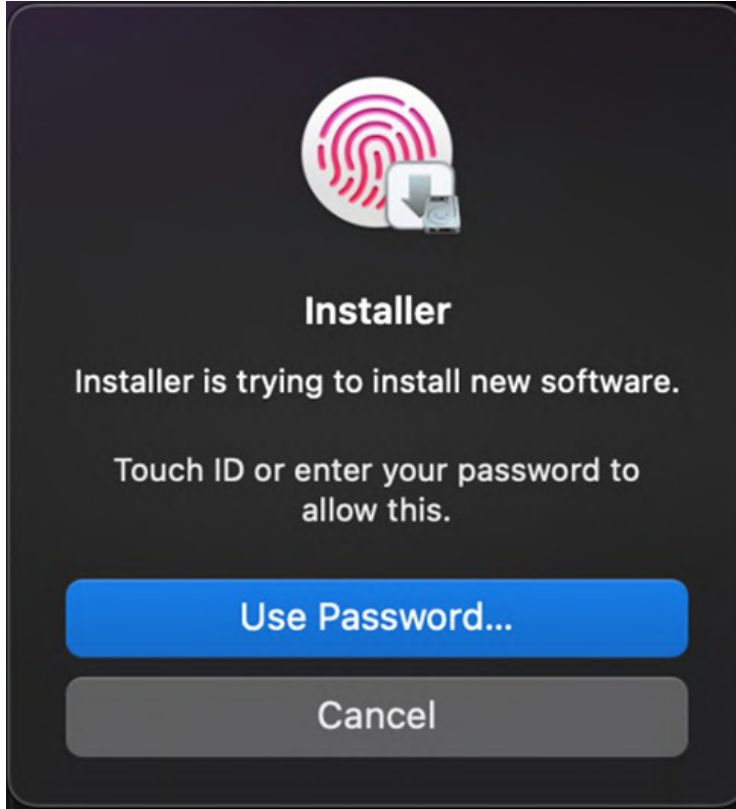

6. Kurulum tamamlanana kadar bekleyin.

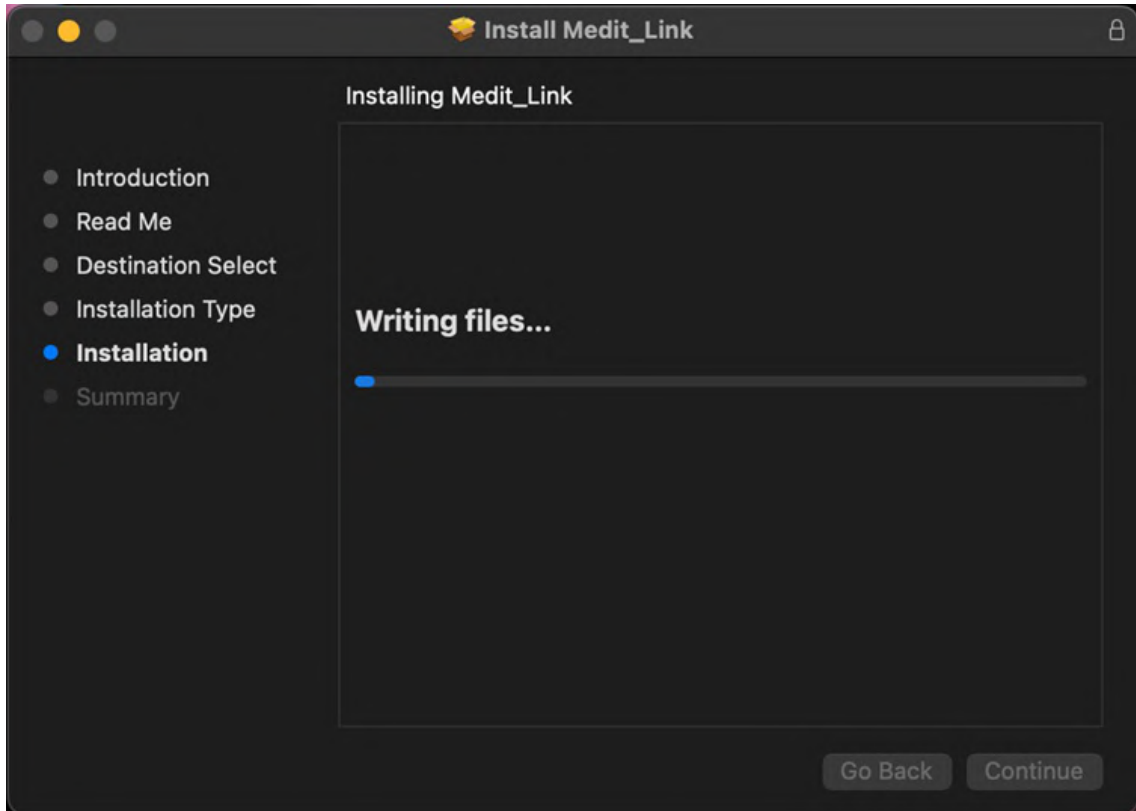


7. Kurulum penceresinden çıkmak için "Kapat"a tıklayın.

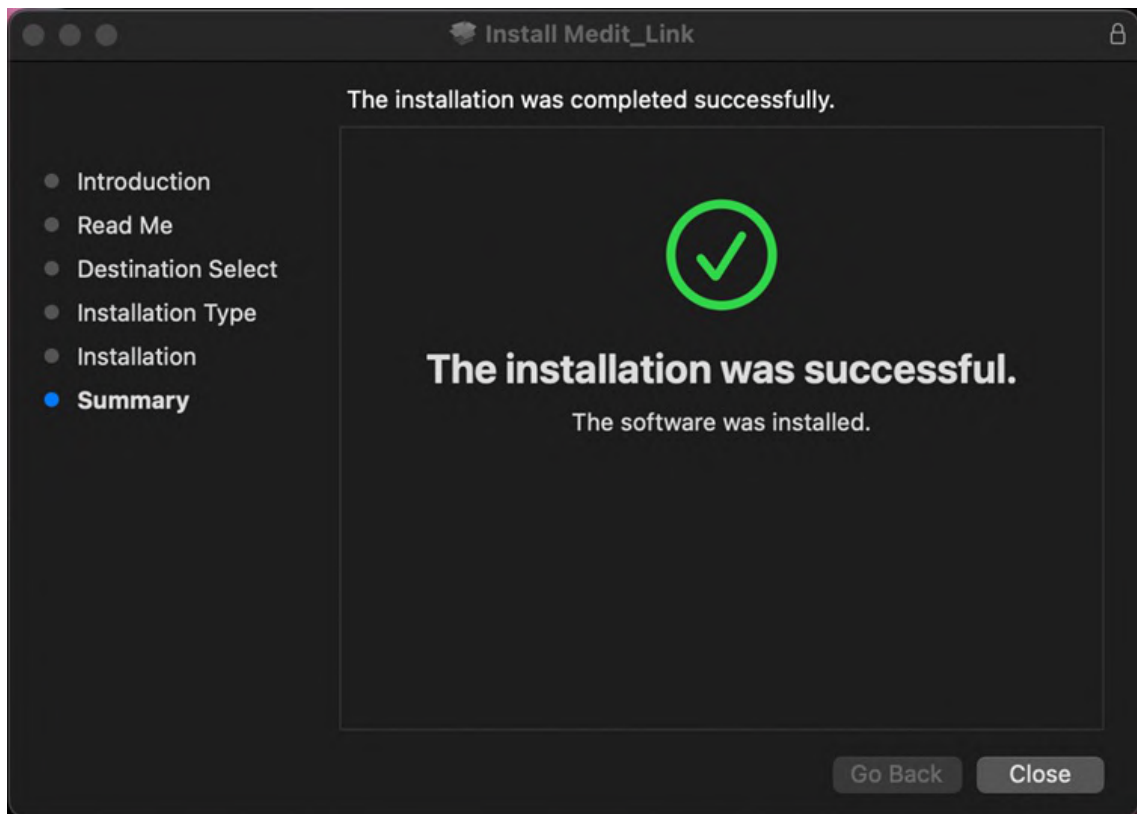

Kaydol & Giriş Yap

Medit Link Websitesi

Medit Link hizmetine www.meditlink.com adresinden kaydolun.

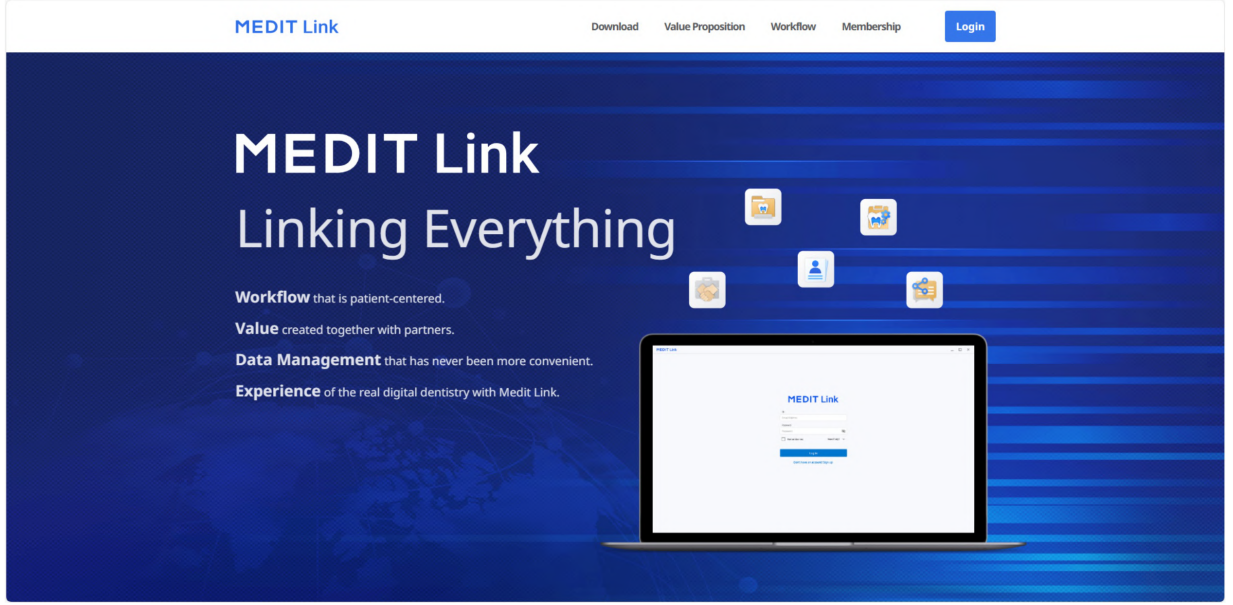

Medit Link China'ya www.meditlink.cn adresinden kaydolun.

Kaydol

Medit Link hizmetini kullanmak için bir hesaba kaydolmanız gerekir. Klinik veya laboratuvar olarak hesap oluşturduktan sonra Medit Link'in sağladığı özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar, üyelik kaydı yapmak için aşağıdaki dört hesap türünden birini seçebilir ve hesap türüne bağlı olarak hizmeti tam veya sınırlı özellik ve ayrıcalıklarla kullanabilirler.

- Klinik- Admin
- Klinik - Üye
- Lab - Admin
- Lab - Üye

Yönetici genellikle kuruluşunuzun bir temsilcisidir ve Medit Link'in tüm işlevlerine ve hizmetlerine tam erişime sahip olacaktır. Buna karşılık, üye hesabının erişimi sınırlıdır.

Üyelik için kaydolmak için şu adımları izleyin:

1. Giriş sayfasından "Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydol"a tıklayın.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)



English (United States)



2. Sağlanan açıklamaları okuduktan sonra, istenen hesap türü için "Kaydol" düğmesini tıklayın.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

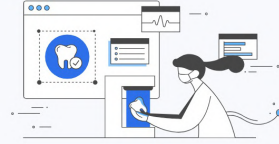

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Aşağıdaki kayıt formu görüntülenir.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

- Klinik veya lab adını girin ve ardından istediğiniz hesap türüne bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
 - Yönetici olarak kayıt yaptırıyorsanız, girilen adın uygun olup olmadığını görmek için "Kullanılabilirliği Kontrol Et"e tıklayın.
 - Üye olarak kayıt oluyorsanız, "Ara" düğmesini tıklayın. Yönetici, siz kaydolmadan önce kuruluşunuzu kaydettirmiş olmalıdır.
- Kayıt formunun geri kalanını doldurun ve "Kaydol" düğmesini tıklayın.



Kayıt sırasında pazarlama bilgileri almayı kabul ederseniz Medit'ten ürün ve hizmet hakkında faydalı bilgiler alacaksınız.

- Size bir doğrulama e-postası gönderilecektir.
- Kayıt işlemi tamamlamak için, alınan bağlantıyı kullanarak e-posta adresinizi doğrulayın.

Oturum Açma ve Karşılama Sayfası

- Oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve "Oturum Aç"ı tıklayın.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. İşletme bilgilerinizi doldurmadıysanız aşağıdaki iletişim kutusu görünecektir.

Welcome, stage-test-wh!

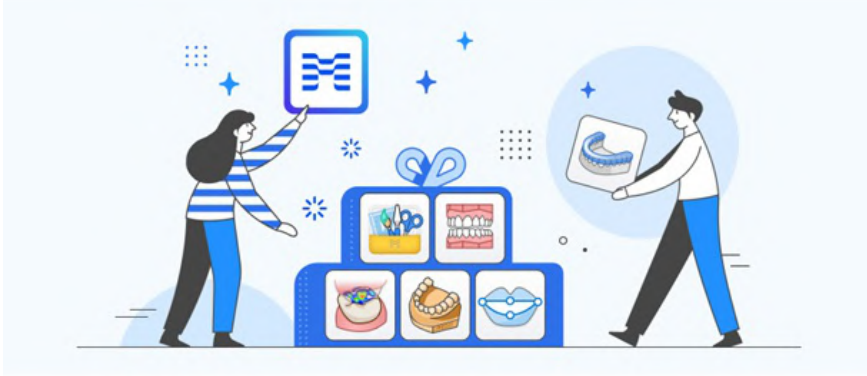

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

 **Not**


Medit Link hizmetlerini kullanmak için klinik veya laboratuvar bilgilerinizin yönetici hesabı kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

3. "Kliniğim'e Git" veya "Lab'ıma Git" düğmesini tıklayın ve işletme adı, kapak/logo resimleri, sunduğunuz hizmetler, ofis adresi, ofis numarası vb. dahil olmak üzere klinik veya laboratuvar bilgilerini girin.
4. Karşılama sayfasına girilen bilgiler, Medit Link Web'deki My Info > Kliniğim veya Labım sekmesinden herhangi bir zamanda düzenlenebilir.

Dashboard

Dashboard'a Genel Bakış

Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

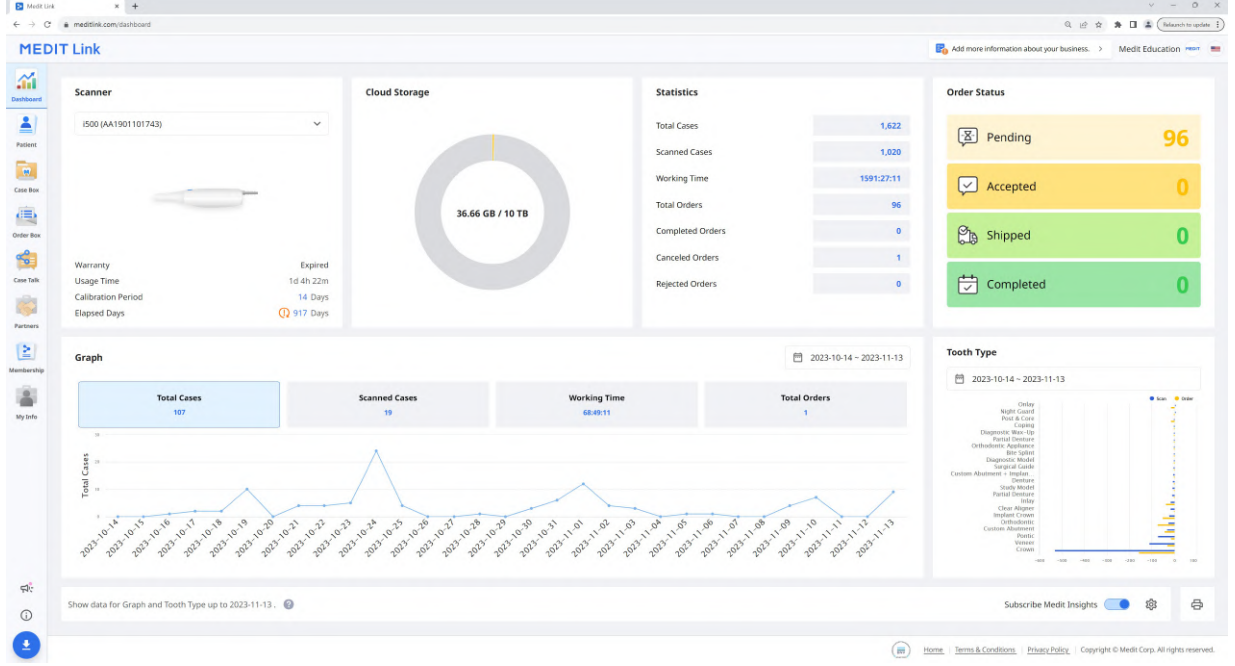

Grafikler ve çizelgeler, Medit Link'te yapılan tüm çalışmalar için istatistikleri gösterir.

Tarayıcı	Garanti, tarayıcı kullanım süresi, kalibrasyon aralığı ve kalibrasyon için geçen süre dahil olmak üzere aktif tarayıcılar hakkında bilgi sağlar.
Cloud Depolaması	Cloud'ın toplam kapasitesini ve kullanımdaki alanı gösterir.
İstatistikler	İş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Sipariş Durumu	Sipariş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Grafik	Dönemsel olarak işle ilgili bilgilerin grafiğini sağlar.
Diş Türü	Tedavi bilgilerine göre tarama ve sipariş sayısı hakkında istatistikler sağlar.


Medit Insights

Medit Insights, kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olan bir raporlama hizmetidir.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Medit Insights

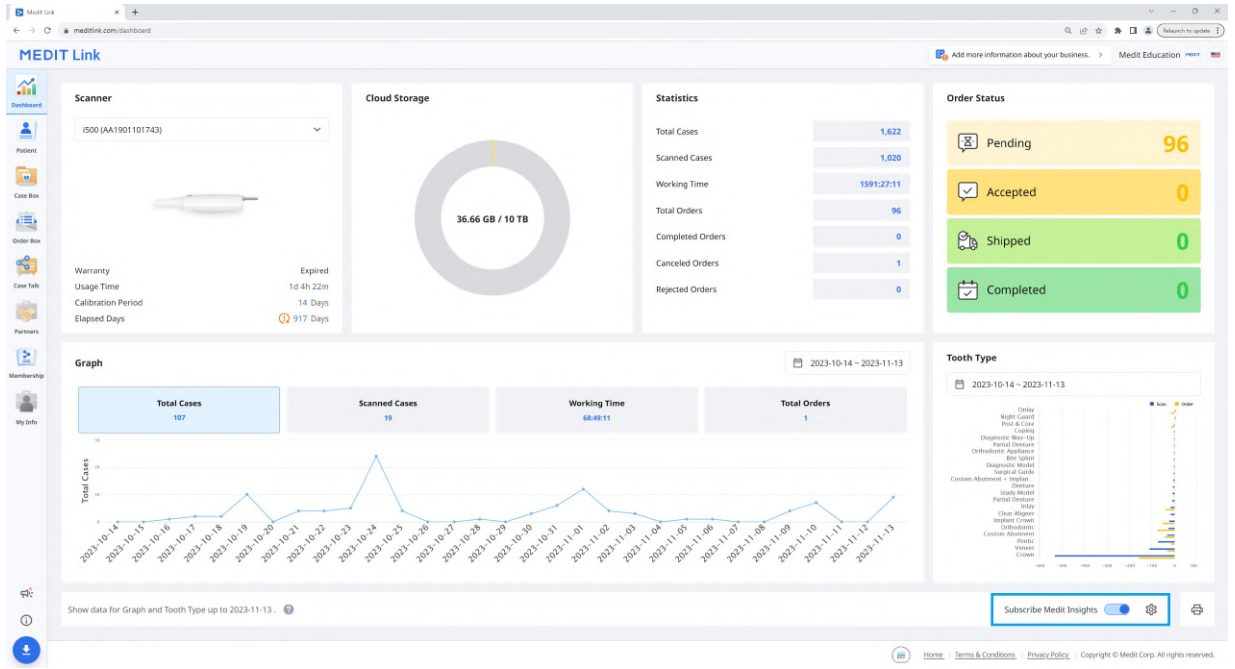

Medit Insights'a Abone Olun

Medit, raporlama hizmeti sağlar ve kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olur. Ek kayıt işlemi gerekmez. "Medit Insights'a Abone Ol" özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.

Medit Link hesabı için kullandığınız e-posta adresini kullanmıyorsanız, Medit Insights'ı almak için başka bir e-posta adresi ayarlayabilirsiniz.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account

☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

CancelOK

Her ayın ikinci günü, aşağıda gösterilen istatistikleri içeren bir e-posta alacaksınız.

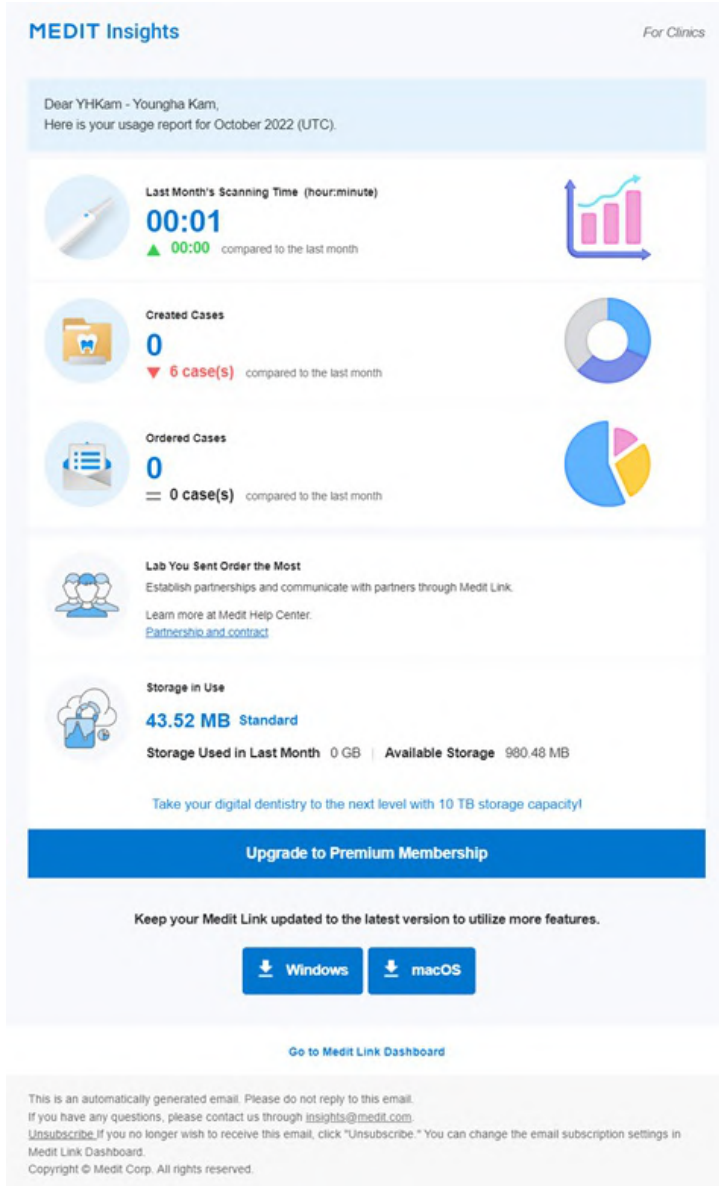

Banner	Medit burada yararlı ipuçları ve bilgiler sağlar. * Bannerı görmek istemiyorsanız, Bilgilerim > Hesabım'daki Pazarlama ve Tanıtım Sözleşmesi onay kutusunun işaretini kaldırın.
İstatistiki Bilgiler	Tarama süresi, oluşturulan vakalar, en çok sipariş edilen lab vb. gibi istatistik bilgileri görüntülenir.
Medit Link'i İndir	Buton, Medit Link indirme bağlantısını sağlar.
Dashboard	Tüm istatistiksel bilgiler, Dashboard bilgilerinize dayanmaktadır. Dashboard'da daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.


Medit Insights aboneliğinden çıkma

Panoda "Medit Insights'a Abone Ol" seçeneğini devre dışı bırakın veya alınan e-postadaki "Abonelikten çık" seçeneğine tıklayın.

Patient

Vakaları hasta adına ve hasta ID'sine göre yönetebilirsiniz.


Medit Link uygulaması aracılığıyla kaydedilen tüm hastalar bir listede gösterilerek hastaları ve vakalarını yönetmeyi kolaylaştırır.

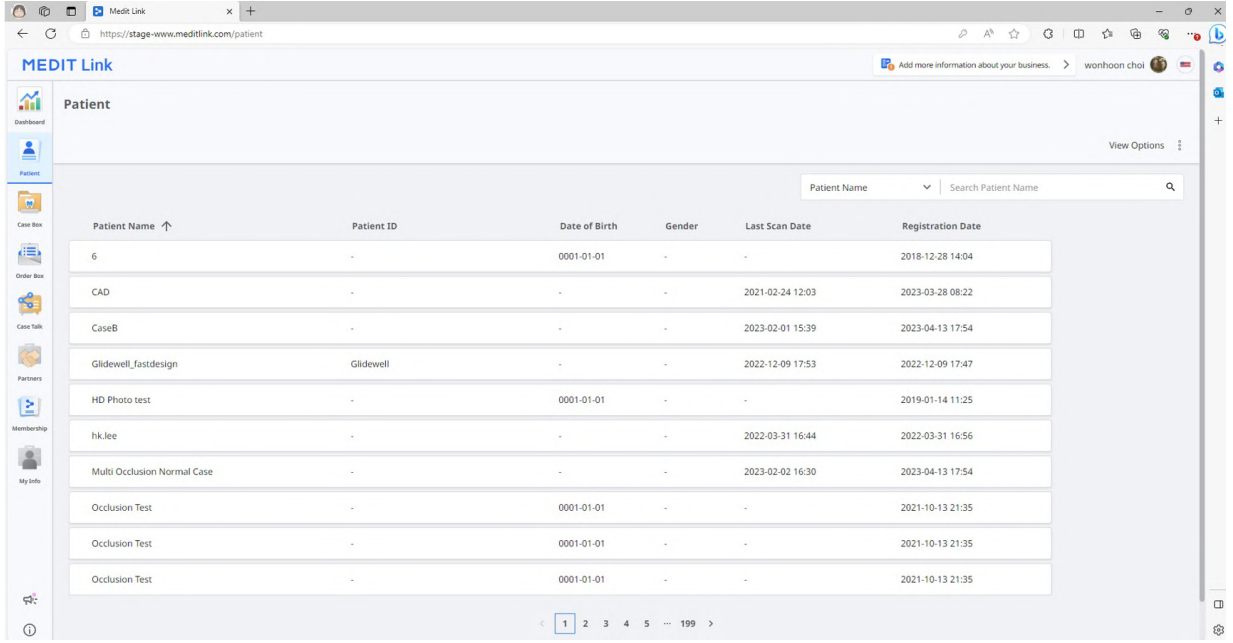

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Hasta Arama

1. Hasta listesinin sağ üst köşesindeki açılır menüden Hasta Adı veya Hasta ID arasından arama kriterlerinizi seçin.

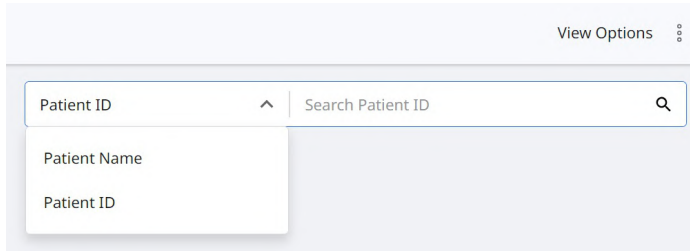

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Seçilen arama kriterlerine göre arama yapmak için hasta adını veya hasta ID'sini girin.
3. Listede yalnızca girilen hasta adına veya ID'sine sahip hastalar görüntülenir.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) veya Work Box (Lab), kullanıcının Medit Link uygulamasında oluşturduğu tüm vakaları gösterir. Aynı bir program yüklemeyen dosyaları bir web tarayıcısı aracılığıyla görebilirsiniz.

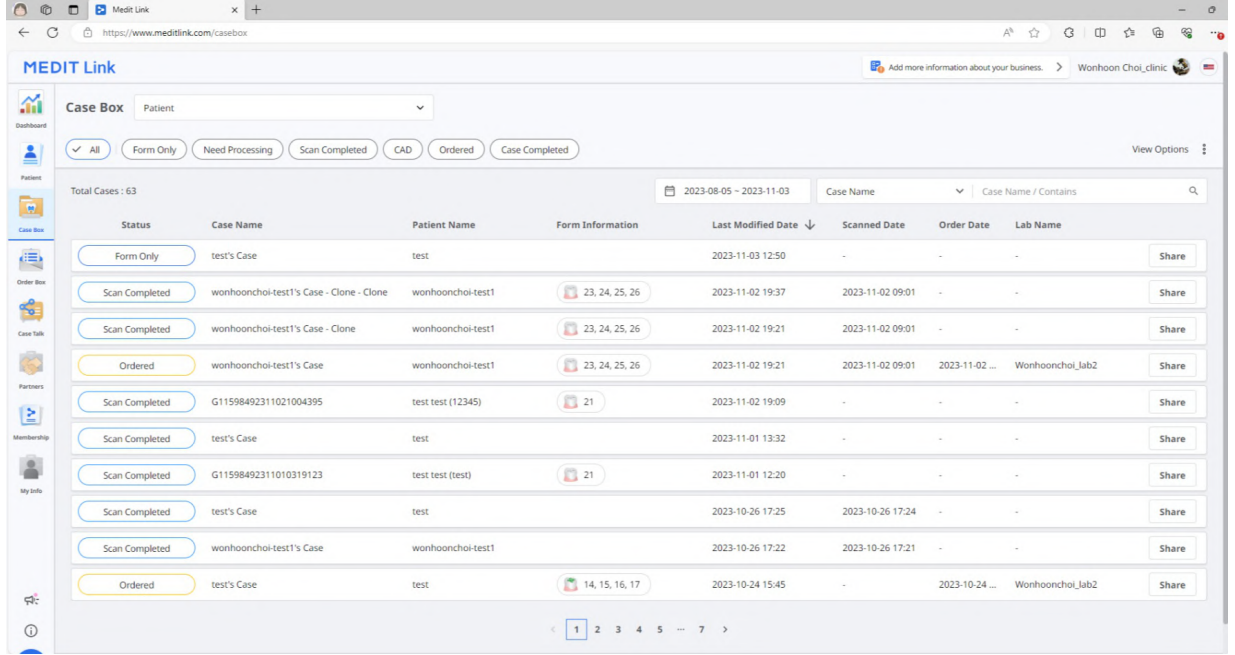


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A date range '2023-08-05 - 2023-11-03' is displayed. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data. A sidebar on the left shows navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Vaka Filtreleme


Hastaya göre filtreleme

Vakaları hastalara göre filtreleyebilirsiniz. Belirli hastalar için vakalar bulduğunuzda faydalıdır.

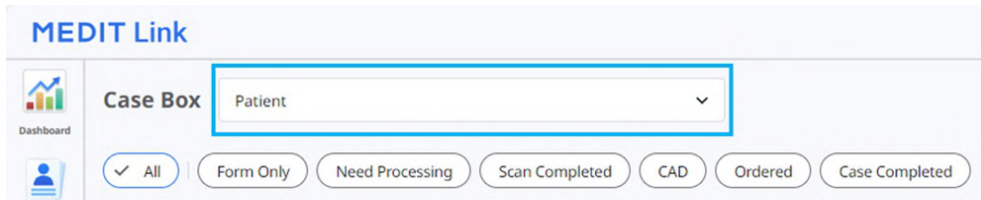

The screenshot shows the Medit Link Case Box search filter interface. It features a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Arama alanına bir hasta adı girin.

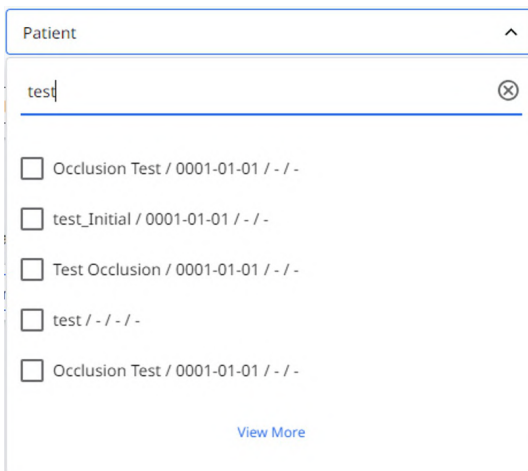

The screenshot shows the patient search dropdown menu. The search input field contains 'test'. Below the input field, a list of search results is displayed, each with a checkbox and a label: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_Initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom.

2. Arama sonuçları listesinden bir hasta seçin.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Listede yalnızca seçilen hastalara ait vakalar gösterilir, böylece çalışmak istediğiniz vakaları bulmanız kolaylaşır.

MEDIT Link
Add more information about your business.
Wonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

Total Cases: 63
2023-08-05 - 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7

Duruma göre filtreleme

Durumlarına göre vakaları filtreleyebilirsiniz.

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

- Kullanıcı görüntülemek istediği durumu tıklayabilir. Tarayıcı yalnızca seçilen duruma sahip vakaları gösterecektir.
- Kullanıcı aynı anda birden fazla durum seçebilir.

Hesap türüne göre aşağıdaki durum türleri sağlanır:

Case Box (Klinik)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Süreye göre filtreleme

Belirlediğiniz süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Süre filtresini tıklayın.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Aralığı seçin.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Hepsi: Tüm vakaları gösterir.
- Özel Aralık: O dönem içinde değiştirilen vakaları görüntülemek için başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtin.
- Bugün: İçinde bulunulan gün değiştirilen vakaları gösterir.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki güne ait vakaları gösterir.
- Son 7 gün: İçinde bulunulan gün hariç 7 günden önceki vakaları gösterir.
- Son 30 gün: İçinde bulunulan gün hariç 30 günden önceki vakaları gösterir.
- Son 90 gün: İçinde bulunulan gün hariç 90 günden önceki vakaları gösterir.
- Bu Ay: İçinde bulunulan ayın vakalarını gösterir.
- Önceki Ay: Önceki ayın vakalarını gösterir.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Aramaya göre filtreleme

Gerekli bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde aramak için arama yeteneklerinden yararlanabilirsiniz.

Case Name


Case Name / Contains

Q

Hesap türüne göre aşağıdaki arama seçenekleri sağlanır:

Case Box (Klinik)	Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Laboratuvar Adı
Work Box (Lab)	Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID

Vaka Detayları

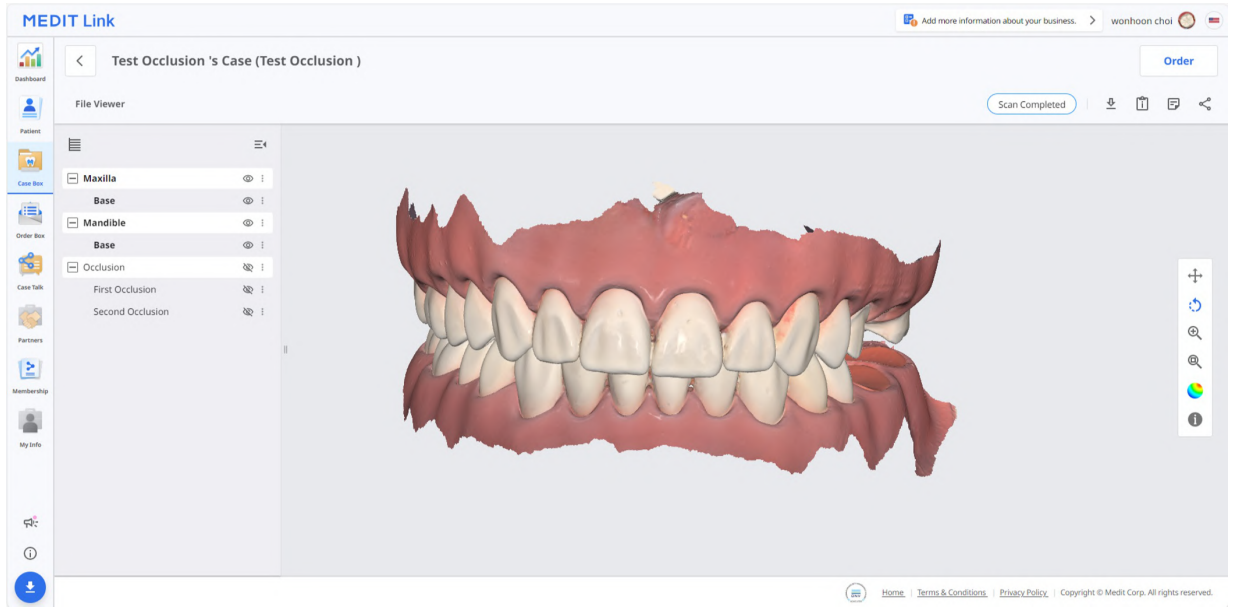

Aşağıdaki vaka yönetimi araçları, Case Box/Work Box'ta sağlanmaktadır.

	Vaka Durumu	Vakanın durumunu gösterir.
	Order Box/In Box'a Gidin	Aynı vaka için başka bir kutuda bir kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	İndir	Vakadaki dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.
	Not & Etiketler	Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.
	Paylaş	Paylaşım için bir bağlantı oluşturun. Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) veya In Box (Lab), Medit Link uygulamasında sipariş edilen vakaları gösterir.

Sipariş Detayları

The screenshot displays the 'Order Box/In Box' interface in the Medit Link application. The top header shows the case name 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' and a 'Cancel Order' button. The main content area is divided into two sections: a form for order details and a table for the order list. The form includes fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The order list table shows four items, all of type 'Inlay', with a 'Pending' status. The interface is annotated with numbered circles 1 through 6, corresponding to the legend below.

- | | |
|---|--|
| 1 | Vaka adını ve hasta adını gösterir. |
| 2 | Sipariş yönetimi için işlevler sağlar (kabul etme/iptal etme; teslim etme/alma). |
| 3 | Mevcut sekmeleri gösterir: Sipariş, Dosya Görüntüleyici |
| 4 | Vakaları ve dosyaları yönetmeye yönelik işlevleri gösterir: Vaka durumu, ayrıntılı bilgi için kısayollar, vaka bilgisi, not & etiketler vb. |
| 5 | Sipariş numarası, hasta adı, ortak adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve not & etiketler dahil olmak üzere siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir. |
| 6 | Sipariş edilen ürün bilgilerini ve teslimat durumunu gösterir. |


Order Box/In Box'daki Sekmeler

Sipariş	Dosya Görüntüleyici
Sipariş ID, hasta adı, hesap adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi, not ve etiketler gibi siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol edin.	Tarama/CAD işlemleri tarafından oluşturulan dosyaları görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar, belirttiğiniz belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üyeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki "Case Talk" aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.

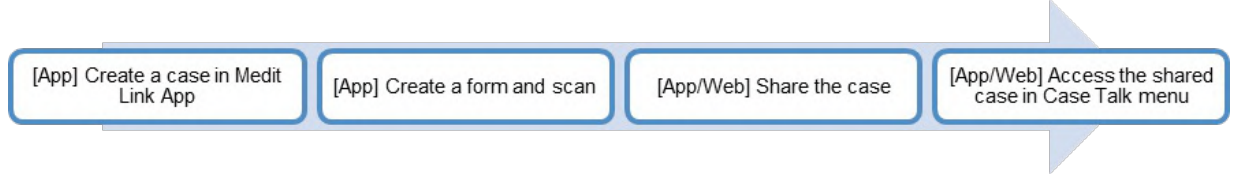

Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.


Case Talk Oluşturma

Case Box/Work Box'ta oluşturulmuş bir vakaya paylaşılan bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Paylaşmak istediğiniz bir vaka bulun ve sağdaki "Paylaş" düğmesine tıklayın.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin.

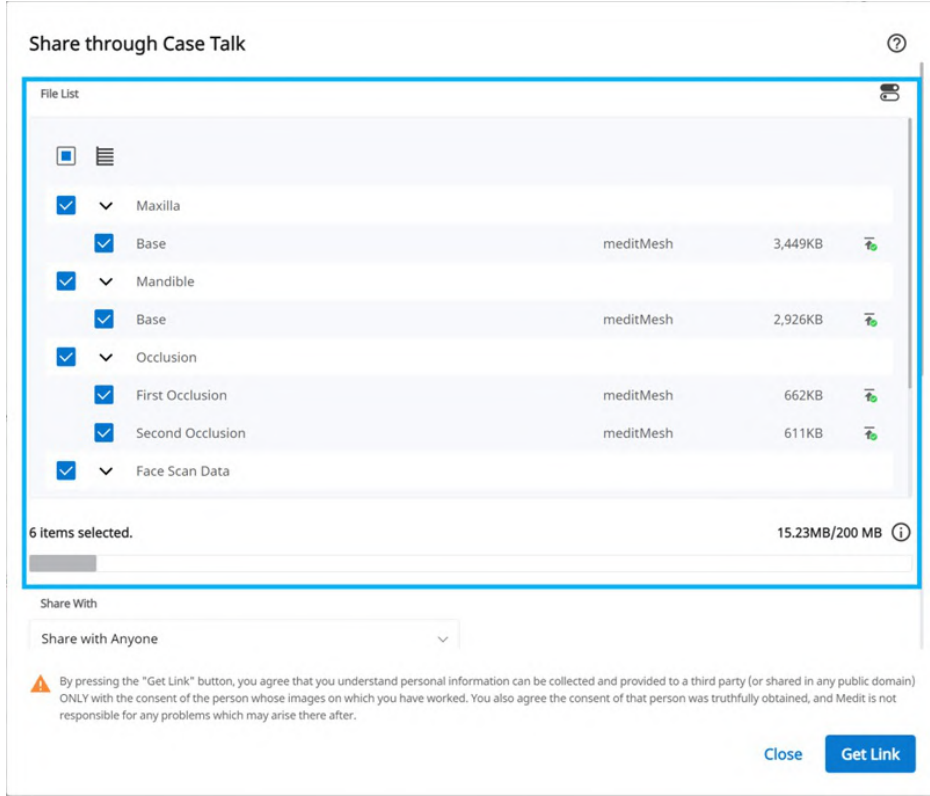

3. Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlayın.
4. Paylaşılan bir bağlantı oluşturmak için "Bağlantıyı Al"ı tıklayın.

Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlama

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close
Get Link

Şunlarla paylaş	- Herkesle paylaş Paylaşılan bir bağlantı oluşturur. Dosyaları herkesle paylaşabilirsiniz. - Belirli kişilerle paylaşın Paylaşılan bir bağlantı oluşturur ve belirli kişilere gönderir.
Şununla paylaş	"Belirli kişilerle paylaş"ı seçerseniz, bağlantıyı belirli kişilerle çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz. - E-Posta Adresi - SMS - Ortaklar
Sona Erme Tarihi	Bağlantı için son kullanma tarihini ayarlayın. Bağlantının süresi dolduktan sonra, paylaştığınız kişiler artık dosyalara erişemez. Son erişim tarihini bugünden itibaren 90 güne kadar uzatabilirsiniz.
PIN Kodu	Veri güvenliğini sağlamak için 6 basamaklı bir erişim kodu ayarlayın.
Hastanın adını paylaşın	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kişiler hastanın adını görecektir.
İndirme İzni Ver	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.
Yorumlara izin ver	- Bu seçeneği işaretlerseniz, paylaşılan bağlantı üzerinden iletişim kurabilirsiniz. - Seçeneğin işaretini kaldırırsanız, alıcı yalnızca sizin yorumlarınızı görebilir ancak kendi yorumlarını ekleyemez.
Yorum	Yorum kısmına mesaj bırakabilirsiniz.

Case Talk detayları

Paylaşılan vakadaki dosyaları görebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler Case Talk ayrıntıları sayfasında mevcuttur.

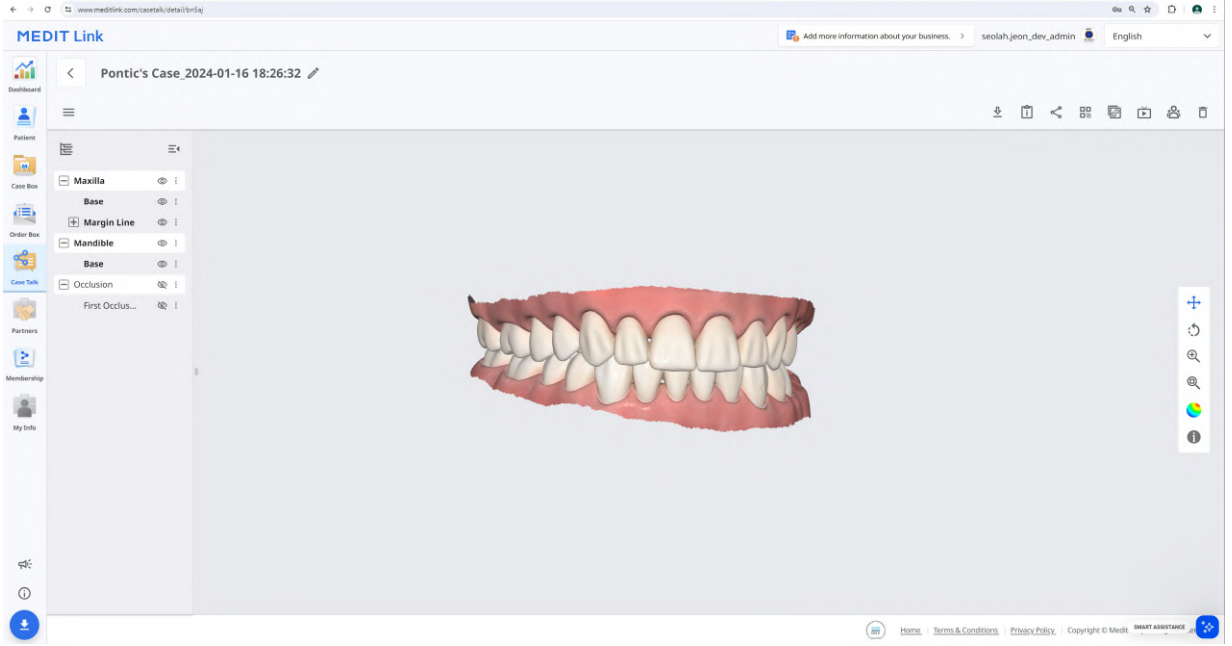

	İndir	Vakadaki tüm dosyaları yerel bilgisayara indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarını değiştirin.
	QR Kod	Vakayı bir QR koduyla paylaşın.
	Bağlantıyı Kopyala	Bağlantıyı panoya kopyalar. Paylaşılan öğeyi, kopyalanan bağlantıyı kullanarak web tarayıcısı üzerinden görebilirsiniz.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı tüm kullanıcıları gösterir.
	Sil	Paylaşım bağlantısını siler. Silinen paylaşılan bağlantıya artık erişilemez.

Not


Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Web Viewer

Paylaşılan verileri bir web tarayıcısında Case Talk aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Bağlantıya erişimi olan kişilerle ek açıklamalar ve yorumlar kullanılarak iletişim kurmak mümkündür.

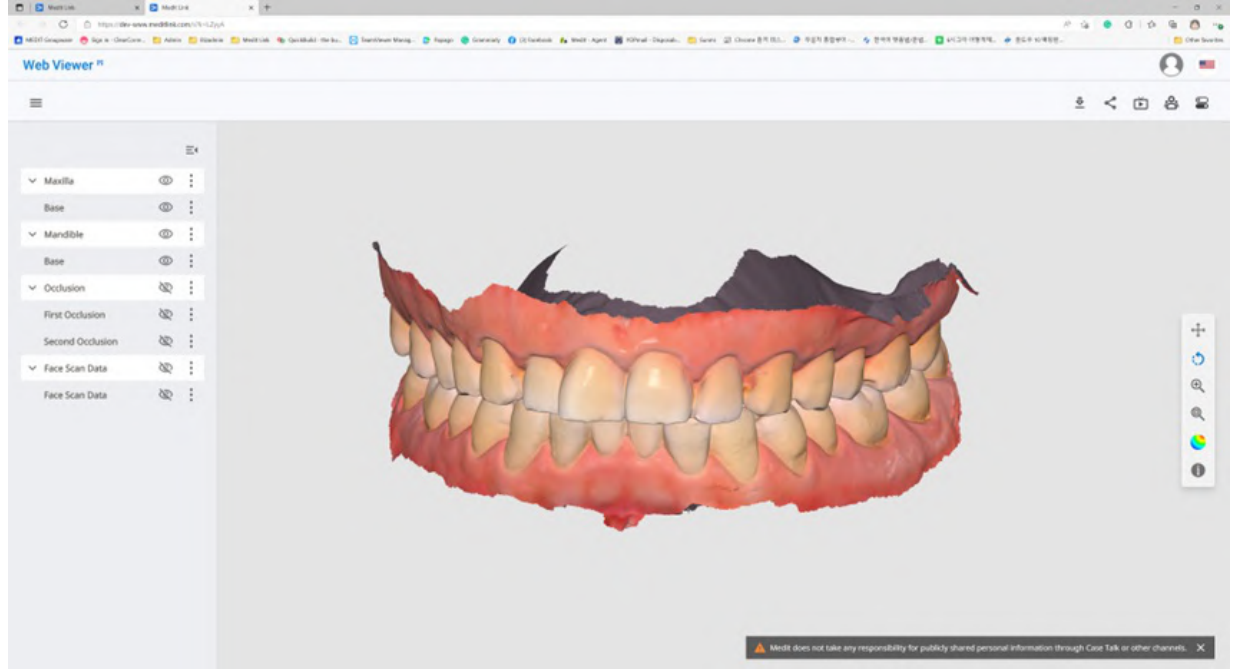

	İndir	Bu vakadaki tüm dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarlarını değiştirin.
	QR Kod	Bağlantıyı panoya kopyalar. Paylaşılan öğeyi, kopyalanan bağlantıyı kullanarak web tarayıcısı üzerinden görebilirsiniz.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı olan tüm kullanıcıları gösterir.
	Dış Etiketleme	Dış etiketleme sistemini değiştirin.


Not

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Ek açıklama

3D model üzerinde belirli bir konuma ek açıklamalar ekleyebilirsiniz. Bağlantıya sahip olan herkes, eklediğiniz ek açıklamaları görüntüleyebilir.

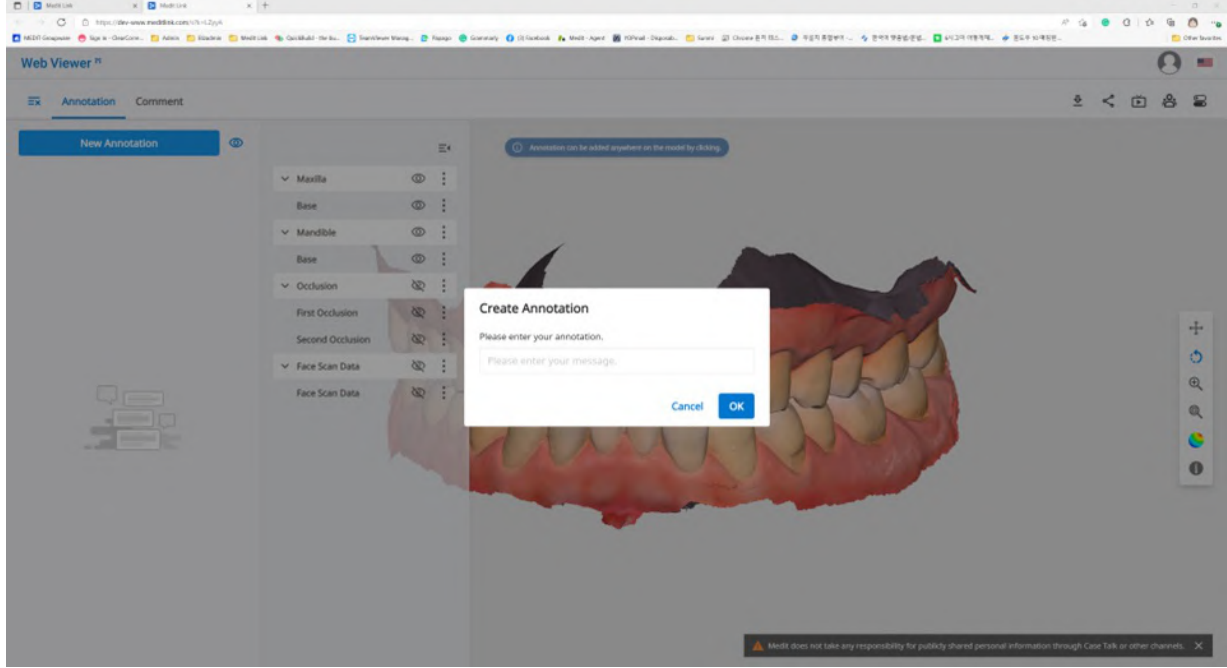

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ek açıklama

1. Sol üst köşedeki menü simgesini bulun ve "Ek Açıklama" sekmesini seçin. Verilerin herhangi bir yerine bir tıklama ile açıklama eklemek için "Yeni Ek Açıklama" düğmesini kullanın.
2. Mesajı yazın, ardından kaydetmek için "Tamam"a tıklayın.

Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. Ek açıklamaları basit bir iletişim kanalı olarak kullanabilirsiniz. Yanıt girmek için oluşturulan ek açıklamaya tıklayın ve "Gönder"e basın.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi  

Annotation 1

1

 09-09 20:31

Send

Yorumlar

Web Viewer menüsündeki "Yorum" sekmesi aracılığıyla bağlantıya erişimi olan kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Yorum

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı

Ekranınızı gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı

1. Web Viewer ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşmak için "Canlı"ya tıklayın.




2. Ekranınızı paylaşmaya başlamak için "Tamam"ı tıklayın.
3. Bağlantıya erişen diğer kişilerin ekran paylaşımını kabul etmesi gerekir.
4. Ekran paylaşımını başlatan kullanıcının ekranı, isteği alan kişinin ekranı ile senkronize olarak görüntülenir.



Veri Ağacı

Tüm veriler, veri ağacındaki niteliklere göre gruplandırılır ve görüntülenir. Verileri gösterebilir veya gizleyebilir, opaklığı ayarlayabilir ve benzeri işlemleri yapabilirsiniz.

Veri Ağacı Kontrolleri

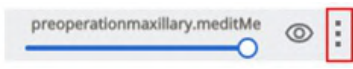Göster/Gizle	Verileri göstermek veya gizlemek için 'göz' simgesini tıklayın. Veri görünürlüğünü bir grup veya tek dosya olarak kontrol edin.
Opaklık	Opaklık kaydırma çubuğunu görmek için mouseu görünür bir öğenin üzerine getirin. Verilerinizin opaklığını değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın. 
Genişletilmiş Menü	Genişletilmiş menü, her Veri Ağacı öğesinin sağ tarafında sağlanır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:  • Yalnızca Bunu Göster: Geçerli olan dışındaki diğer tüm verileri gizleyin. • Gizle: Mevcut verileri gizler.

3D Model Kontrolleri

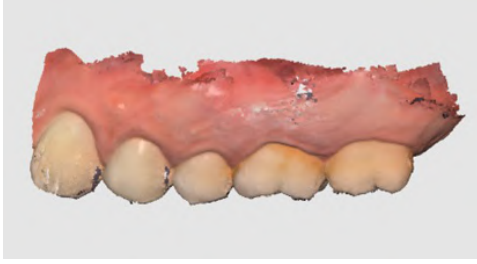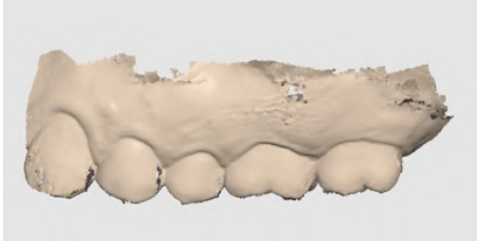	Pan	Modeli hareket ettirin.
	Döndür	Modeli döndürün.
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.
	Sığdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.
	Model Görüntüleme Modu	Doku Açık 
		Doku Kapalı 

Partners

Ortaklık talebinde bulunmak için potansiyel ortakları arayabilir ve mevcut ortakların listesini görüntüleyebilirsiniz.




Google Haritalar kullanan hizmetler Medit Link China'da mevcut değildir.

Ortak Ara


Medit Link kullanıcılarını işletme adlarına ve/veya adreslerine göre arayabilirsiniz.

Arama sonuçlarında çalışmak istediğiniz bir işletmeye ortaklık isteği gönderebilirsiniz.

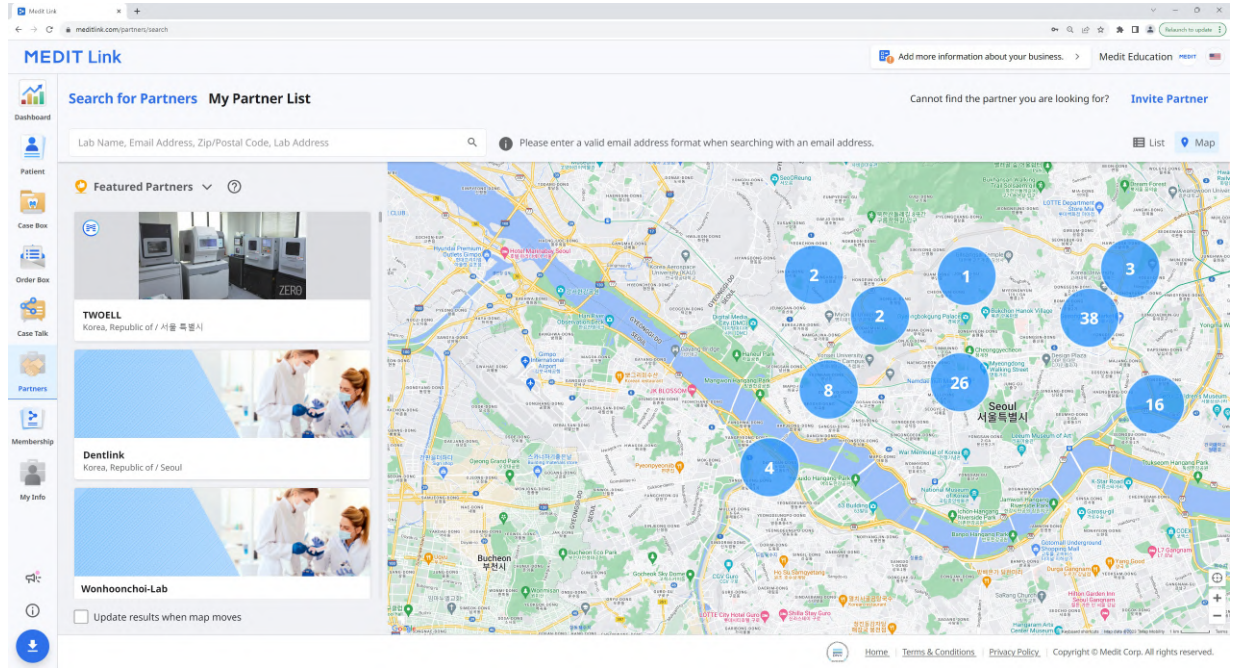

Ortaklarımızın Listesi

Mevcut tüm iş ortağı işletmelerinizle olan mevcut iş ortaklıklarınızı Ortaklarımızın Listesi'nde inceleyebilirsiniz.

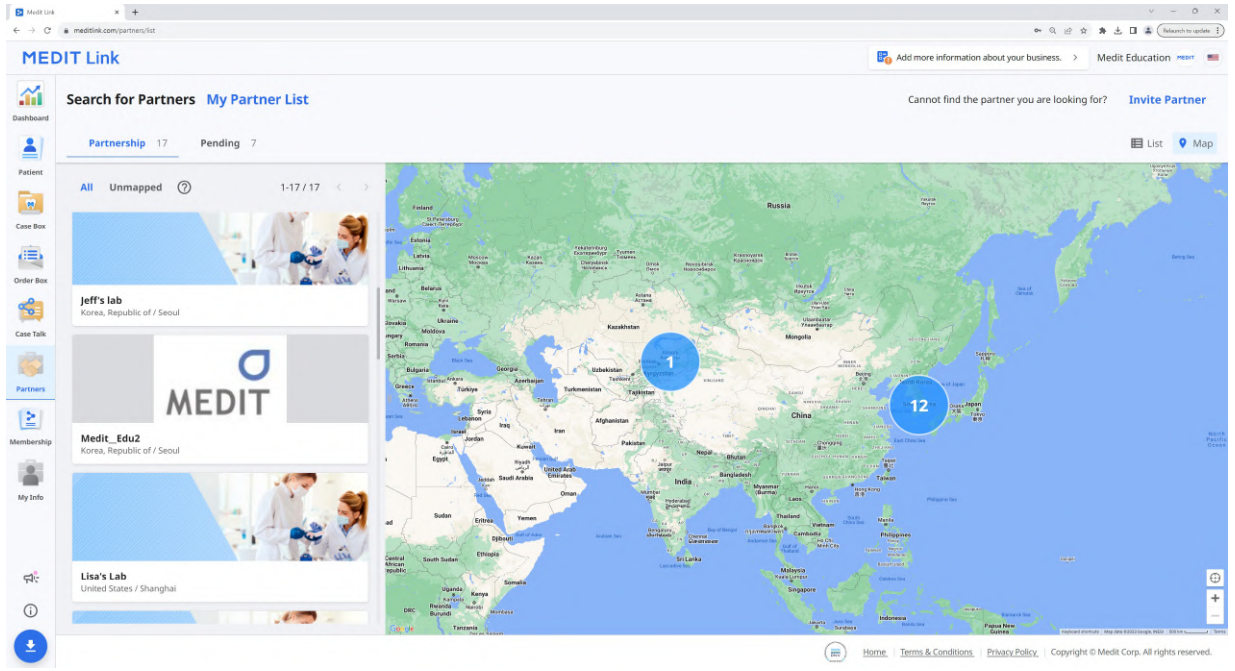

Ortak Daveti

Çalışmak istediğiniz bir klinik veya laboratuvarınız varsa onları Medit Link'e davet edebilirsiniz. Daveti kabul ettiklerinde ortaklık otomatik olarak kurulacaktır.

1. Ekranınızın sol üst kısmındaki "Ortağı Davet Et" seçeneğine tıklayın.
2. Birlikte çalışmak istediğiniz işletmenin e-posta adresini girin ve onlara ortaklık isteği içeren bir davetiye gönderin.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Davet edilen kurum daveti kabul edip Medit Link'e kaydolduktan sonra ortaklık otomatik olarak kurulacaktır.

Membership

Üyelik

The screenshot displays the Medit Link Membership page. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Plan' and shows the 'Premium' plan selected. The plan details include a price of \$0.99 per user per month, a list of benefits (A paid plan, 10 TB of cloud storage, Efficient for users with many cases and various data, One-month free trial included), and a 'Subscribe' button. Below the plan details, there are four 'Premium Benefits' cards: 'Sample Coupon 1' (Medit Partner, expires 2023-02-25), 'Sample Coupon 2' (Medit Partner, expires 2023-02-25), '5% Off' (Dental Company, expires 2024-04-27), and 'Sample Boucher' (Standard, expires 2024-04-30). A note at the bottom states: 'The promotion has been applied. You can now use the plan until 2021-10-01. View More. If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. Click.' On the right side, the 'Cloud Storage' section shows a donut chart indicating 4.75 GB / 10 TB usage. Below the chart, there are checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (30.51 GB), and 'Result Files & Attachments' (4.72 GB).

Plan

İndirim kuponları dahil her planın neler sunduğunu ve mevcut abonelik durumunuzu görebilirsiniz. İstedığınız zaman planınızı yükseltebilir veya aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

The screenshot displays the Medit Link Membership page, focusing on the 'Standard' plan. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'Plan' and shows the 'Standard' plan selected. The plan details include a price of \$0.99 per user per month, a list of benefits (A paid plan, 10 TB of cloud storage, Efficient for users with many cases and various data, One-month free trial included), and a 'Subscribe' button. Below the plan details, there are four 'Premium Benefits' cards: 'Sample Coupon 1' (Medit Partner, expires 2025-02-25), 'Sample Coupon 2' (Medit Partner, expires 2025-02-25), '5% Off' (Dental Company, expires 2024-04-27), and 'Sample Boucher' (Standard, expires 2024-04-30). A note at the bottom states: 'The promotion has been applied. You can now use the plan until 2021-10-01. View More. If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. Click.'

Medit Link aşağıdaki üyelik planlarını sunar:

Standard

- Oturum açmış tüm kullanıcılar için ücretsiz standart plan
- 1 GB cloud depolama
- Yeni kullanıcılar için

Premium

- Ücretli plan
- 10 TB cloud depolama
- Birçok vakaya ve çeşitli verilere sahip kullanıcılar için
- Bir aylık ücretsiz deneme


	Standard	Premium
Cloud Depolaması	1 GB	10 TB
Aylık Ücret	Ücretsiz	0.99\$/ay
* Cloud Storage, Ham Verilerin kapladığı alanı hesaplamaz.		



Üyelik planları Medit Link China'da mevcut olacaktır. Özelliğin resmi sürümüne kadar Premium planı ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Cloud Depolaması

Sağ taraftaki bölümde, cloud depolama alanınızı yönetebilirsiniz.

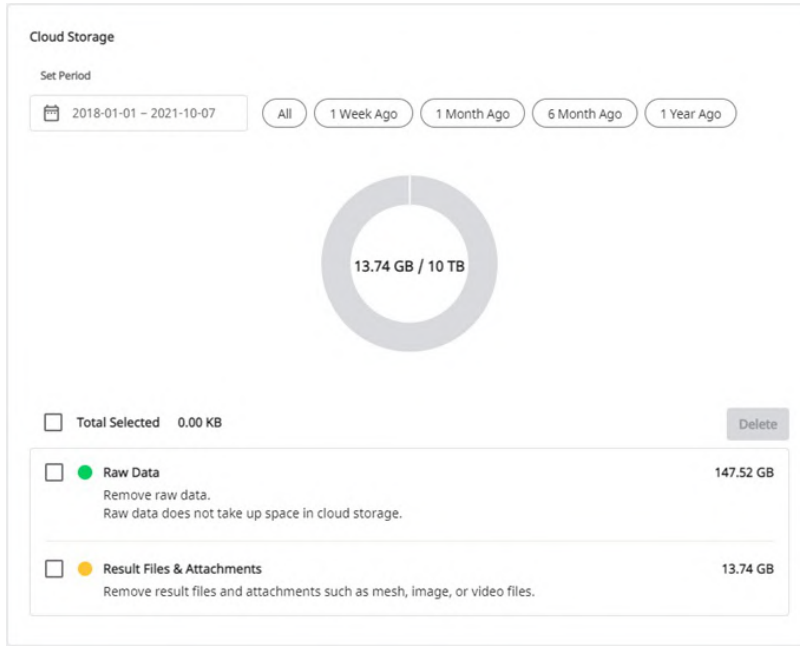


Periyodu Ayarla	Söz konusu zaman çerçevesinde oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin. • Hepsini: Tüm dosyaları görün. • 1 Hafta Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir hafta geçen dosyaları görün. • 1 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir ay geçen dosyaları görün. • 6 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden altı ay geçen dosyaları görün. • 1 Yıl Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir yıl geçen dosyaları görün.
Ham Veri	Ham veriler cloud depolama alanının içinde yer almaz ve bu nedenle pi-grafikte olmayacaktır. Ancak gerekirse ham verileri buradan yönetebilirsiniz; örneğin hastanın özel bilgilerini korumak için verileri silebilirsiniz.
Sonuçlar & Ekler	Sonuç ve ek dosyaları cloud alanının içerisinde yer alır. Cloud doluyorsa, gereksiz dosyaları kaldırarak daha fazla depolama alanı sağlayabilirsiniz.
Sil	Alanı boşaltmak için seçilen dosyaları cloud depolama alanından kaldırın.

Abone Ol


Şu anda Standard plan veya kullanma kodu içeren Premium plan kullanıyorsanız Premium plana abone olabilirsiniz.

Ödeme Stripe hizmeti (www.stripe.com) aracılığıyla gerçekleştirilir.

1. Üyelik > Plan > Premium'a gidin ve "Abone Ol" düğmesine tıklayın.

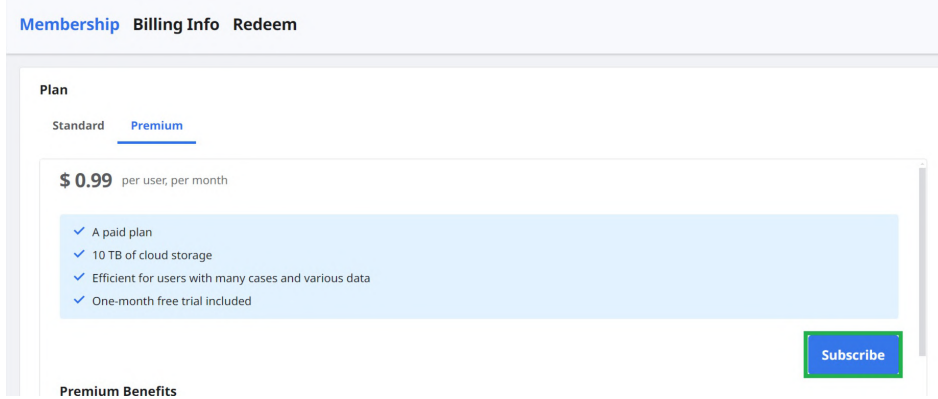

2. Premium plan açıklamasını kontrol edin ve tekrar "Abone Ol" düğmesini tıklayın.

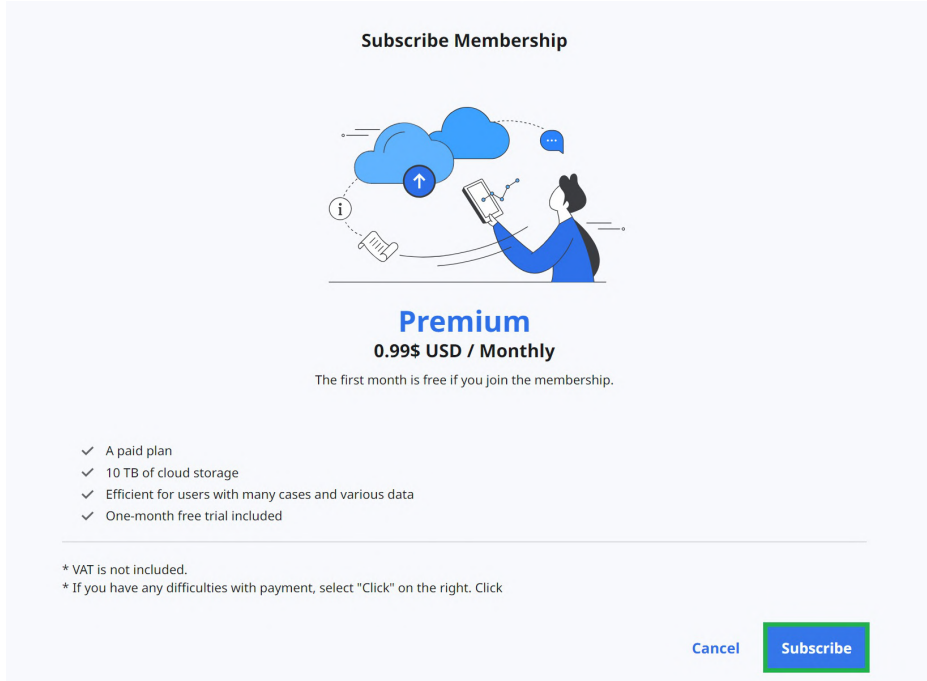

3. Fiyat ve koşulları kontrol edin ve ödeme için gerekli bilgileri girin. Ardından, "Abone Ol"u tıklayın.

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic **\$0.99**
Medit Link Membership
Billed daily

Subtotal **\$0.99**

1 MONTH FREE – for first subscription **-\$0.99**
100% off for a day

Total due today **\$0.00**

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with **link** ⇒

Or pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

☐ Securely save my information for 1-click checkout
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

4. Ödeme işlemi birkaç saniye sürecektir. Bittiğinde, onay mesajını göreceksiniz.

Subscribe Membership



Payment Successful.

[Invoice](#)


[Close](#)

Abonelikten çık


Üyelikten istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Abonelikten çıktıktan sonra, o ücretli ayın kalan günleri için Premium üyeliği kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki ödeme gününden itibaren planınız Standart olarak değiştirilecek ve bulut depolama alanı 1 GB ile sınırlandırılacaktır. Cloud depolama kapasitesi aşılırsa dosyalar yedeklenmeyecek, sipariş ve paylaşım fonksiyonları kullanılamayacaktır.

1. "Abonelikten Çık"ı tıklayın.
2. "Aboneliği İptal Et"i tıklayın.

Cancel Subscription

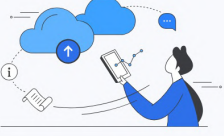

Premium
Subscribed

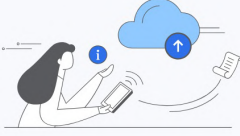

Standard
Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

3. Abonelikten çıkmak istediğinizi onaylamak için, yeni açılır pencerede tekrar "Aboneliği İptal Et"i tıklayın.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

4. Aboneliğiniz iptal edildi.
5. Bir sonraki ödeme gününden itibaren planınız Standart olarak değiştirilecek ve bulut depolama alanı 1 GB ile sınırlandırılacaktır. Cloud depolama kapasitesi aşırsa dosyalar yedeklenmeyecek, sipariş ve paylaşım fonksiyonları kullanılamayacaktır.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Fatura Bilgisi

Her ödeme için bir fatura da dahil olmak üzere üyelik aboneliklerinin ödeme geçmişini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, bir sonraki planlanmış ödemeden itibaren uygulanacak olan ödeme yöntemini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

PlanPremium

Amount0.99\$ USD / Monthly

Next Payment Date2021-09-09

Payment MethodVisa *****4242 (11/21) StripeEdit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

<

1

>

Ödeme yöntemi nasıl eklenir?

1. "Ödeme Yöntemini Düzenle"yi tıklayın.

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa **** *4342 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. "Ödeme Yöntemi Ekle"ye tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Gerekli bilgileri girin ve "Ekle" ye tıklayın.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. Yeni eklenen ödeme yöntemi varsayılan olarak ayarlanacak ve bir sonraki ödeme için kullanılacaktır.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Expires 11/2021



+ Add payment method

Ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?

1. Faturalandırma iletişim penceresinde değiştirmek istediğiniz ödeme yönteminin yanındaki genişletilmiş menü simgesini tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Expires 11/2021



Expires 11/2021



+ Add payment method

2. Seçilen kartı varsayılan ödeme yöntemi olarak ayarlamak için "Varsayılan yap"ı tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA

**** 5556

Default

Expires 11/2021

×

VISA

**** 4242

Expires 11/2021

...

+ Add payment method

Make default

Delete

BILLING INFORMATION

Kullanım Kodu

Promosyonun bir parçası olarak sağlanan kullanım kodunu kaydedin. Premium üyeliği kodla birlikte kullanabilirsiniz.

Kullanım Kodunu Kaydet

1. Kullanma kodunu girin ve "Kayıt Ol"u tıklayın.

Dashboard

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30	Wonhoon-TestRedeem	Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Bildirimi okuyun ve açılır iletişim kutusunda "Kaydol" veya "Uygula"yı seçin.
 - **Kaydet:** Kullanım kodunu kaydedin. Kullanım kodunu daha sonra da etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.
 - **Uygula:** Kaydedin ve kullanım kodunu etkinleştirin. Promosyon indirimi hemen uygulanır.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If
applied immediately, it will start after the expiration of the active
promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

[Close](#)[Register](#)[Apply](#)

Kullanım Kodunu Etkinleştir

Birden fazla kullanım kodu kaydedebilirsiniz, ancak kullanmak istediğinizi etkinleştirmeniz gerekir.

1. Kullanmak istediğiniz kodun yanındaki "Etkinleştir" butonuna tıklayın.
 - Eğer "Activated" durumunda bir kod yoksa seçtiğiniz kod hemen uygulanacaktır.
 - Halihazırda etkinleştirilmiş bir kod varsa, yeni seçilen kod "Waiting" durumuna geçer. Halihazırda aktif olan kullanım kodunun süresi dolduğunda, "Waiting" durumundaki yeni kullanım kodu otomatik olarak etkinleştirilecektir.

Not

Yalnızca bir kullanım kodu etkinleştirilebilir ve yalnızca bir tanesi "Waiting" durumunda olabilir.

My Info

Hesabım

Kayıt sırasında verdiğiniz bilgileri inceleyebilir, düzenleyebilir ve üyelik durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

🔔 Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

Kliniğim/Labım (Yalnızca Yönetici Hesabı)

Kliniğiniz veya laboratuvarınız hakkındaki bilgileri inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu bölümü yalnızca yönetici hesapları kullanabilir.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Tarayıcı

Hesap için bağlı cihaz bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No. Type Serial Number Usage Time Last Connected Last Calibrated Warranty Start Date Warranty Expiry Da... Days Left

1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

50

Diğer Menü

Bildirimler & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

İlgili Websiteler

Medit Link kullanımı hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Medit Academy, Medit Academy YouTube ve Medit Yardım Merkezi gibi Medit'in eğitim ve bilgi kaynaklarına erişin.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Medit Link App'i indirin

Program yükleyicinin en son sürümünü web'den indirebilirsiniz. Bu menü, ürün paketinde sağlanan yükleyiciyi kaybettiğinizde veya eski bir yükleyiciye sahip olduğunuzda yardımcı olur.

 **Not**

Medit Link, internet bağlantınız olduğunda otomatik olarak güncellenir.

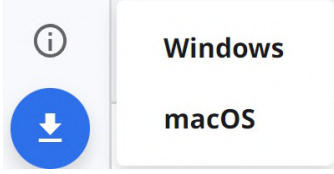

Genel Bakış

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Başlık Çubuğu	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Başlık Çubuğu 'na bakın.
2	Menü	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Menü 'ye bakın.
3	Araçlar ve İşlevler	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Dosya Görüntüleyici ve Medit Link App > Görüntüleme Seçenekleri 'ne bakın.
4	Vaka Listesi	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Filtreleme ve Arama 'ya bakın.

Aşağıdaki tablo, her bir klinik ve laboratuvar hesabı türünde hangi menülerin kullanılabileceğini özetlemektedir.

Hesap Türü		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Klinik Hesabı	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Üye	O	O	O	X	X	O	O * Yalnızca geri yükleme özelliği	O
Lab Hesabı	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Üye	X	X	X	O	O	O	O * Yalnızca geri yükleme özelliği	O

Başlık Çubuğu

Başlık çubuğu, hesap bilgileri, bildirimler, uyarılar ve güncellemeler, ayarlar ve ağ durumu gibi özelliklere hızlı erişim sağlar.



Bilgilerim

Bilgilerim profil resmi, klinik veya laboratuvar adı, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi temel kullanıcı bilgilerini içerir.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Bildirimler

Ortaklıklar, siparişler ve iş süreçleriyle ilgili bildirimleri görebilirsiniz.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery 2020-08-20 오후 5:20
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order 2020-08-20 오후 5:18
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work 2020-08-14 오후 6:33
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work 2020-08-14 오전 10:15
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Yalnızca okunmamış mesajları göstermek için kutuyu işaretleyin. |
| 2 | İlgili vakaya veya web sayfasına anında geçmek için herhangi bir bildirimle tıklayın. |

Bildirim & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar

Ayarlar iletişim kutusu kullanıcıların programı yapılandırmasına olanak tanır.

Ayar seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen [Medit Link App > Ayarlar](#)'a bakın.

Medit Link, bir ağa bağlandığınızda tüm özellikleri sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Network Status

-  Network speed is good.
-  Network speed is fast enough.
-  Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.
-  Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.
-  Synchronization is in progress. Some case lists may not match.
-  Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

[Close](#)

Ağ bağlantısı iyi değilse, aşağıdaki kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz:

- Vaka sipariş etme, vaka oluşturma, Case Talk aracılığıyla paylaşma ve cloud senkronizasyonu gibi bazı işlevler kısıtlanacak.
- Ağ ortamının etkisi nedeniyle hizmetin genel performansı azaltılabilir.

Bu durumda, temel görevleri gerçekleştirmek için Çevrimdışı Mod'a girebilir ve ardından bir ağa bağlandığınızda internet gerektiren özellikleri kullanabilirsiniz.



Ağ sembolü, geçerli alan ile AWS (Amazon Web Hizmeti) arasındaki yanıt hızını gösterir. Bu, ağ hızınız anlamına gelmez, bu nedenle bazen ağ hızınız yeterince hızlı olsa bile durumu zayıf veya kötü olarak gösterebilir.

Diğer işlem aynı ağı kullanıyorsa, hız zayıf veya kötü olarak gösterilebilir ve Medit Link'in genel performansı kötü olabilir. Bu durumda lütfen ağı diğer işlemlerle paylaşmayın.

Örneğin, "Ham Verileri Yükle" özelliği, ağ sürecinin çok büyük bir parçasıdır. Sembol zayıf veya kötü durumu gösteriyorsa, Ayarlar > Ham Verileri Yükle'ye gidin ve "Otomatik Olarak Yükle"yi kapatın.

Ayarlar

Genel

Genel sistem kurulumu için seçenekler sunar.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Kaydedilecek Klasör	Medit Link ve bağlı programlarda oluşturulan veri sonuçlarını depolamak için bir klasör belirtin.	
Uygulama Kurulum Klasörü	App Box'da bulunan Medit Apps ve ortak uygulamalar için bir kurulum yolu belirtin.	
Dil Ayarları	Program için dili seçin.	
Diş Etiketleme	FDI ile US arasında bir diş etiketleme sistemi seçin.	
Bildirimler	İşaretlendiğinde, program güncellemeleri için bildirim alacaksınız.	
Ham Verileri Yükle	İşaretlendiğinde, ham veriler otomatik olarak clouda yüklenir. Medit Link'i başka bir bilgisayarda aynı hesapla kullanırken orijinal verilerin yedeklenmesine ve sorunsuz tarama yapılmasına yardımcı olur. Orijinal veriler için cloud yedeklemesi yalnızca Medit Scan for Clinics'te alınan veriler için geçerlidir.	
Hızlı Tarama	Medit Scan for Clinics'te aşağıdaki tarama aşamalarının form bilgilerini doldurmanıza gerek kalmadan otomatik olarak görünmesini isteyip istemediğinizi seçin. • Maksilla için Pre-Op • Mandibula için Pre-Op • Yüz Taraması	
Görüntüleme Seçenekleri	Gelişmiş Görüntü	İşaretlendiğinde, 3D model daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görüntülenir.
	Renk Dokusunu Ayarla	3D modelin parlaklığını ayarlar. * Aynı verileri başka bir yazılımla açtığınızda ortaya çıkan renkler Medit Link'ten biraz farklı olabilir.
Medit Kullanıcı Deneyimi Geliştirme Programı	Medit Kullanıcı Deneyimi Geliştirme Programı'na katılın. • Toplanan bilgileri ürün ve hizmetimizi geliştirmek için kullanıyoruz. • Kişileri tanımlayan herhangi bir bilgi toplamıyoruz.	
Giriş Yaptıktan Sonra Varsayılan Sayfa	Programı başlatırken görüntülenecek varsayılan menüyü seçin. • Klinik hesapları Patient ve Case Box arasında seçim yapılabilir • Lab hesapları In Box ve Work Box arasında seçim yapılabilir	

Depolama Yönetimi

Yerel ve cloud depolama alanını kontrol edin ve yönetin.

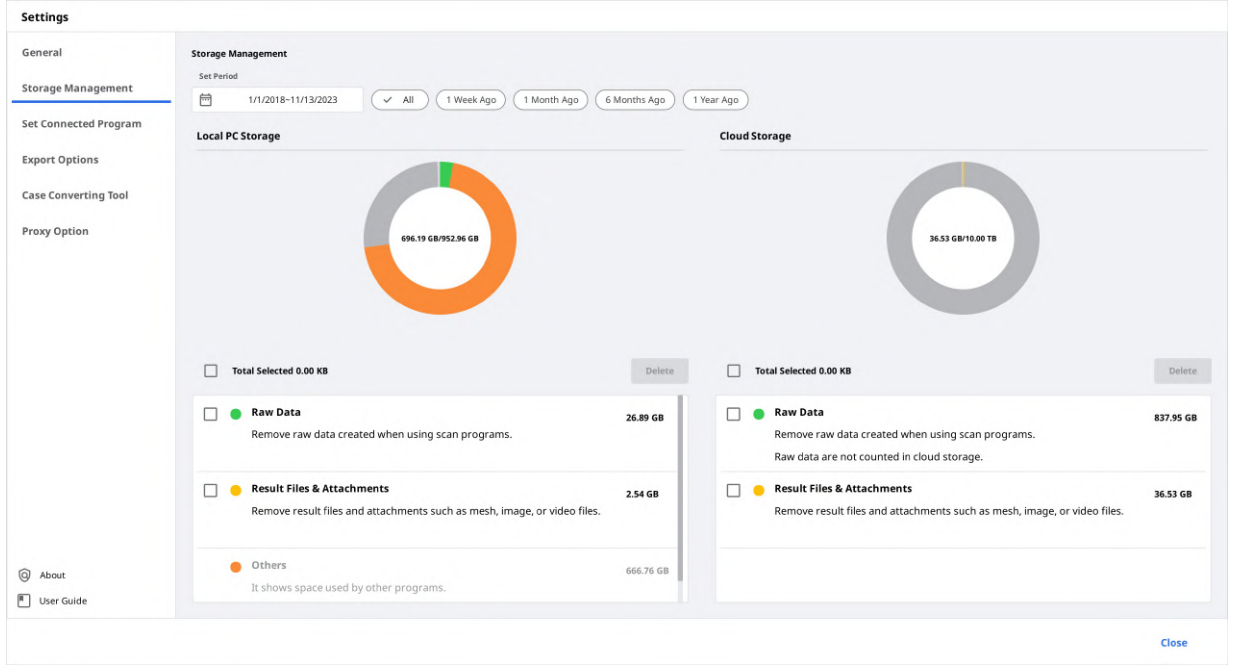

Periyodu Ayarla

Aşağıda belirtilen zaman aralıklarında oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin.

- Hepsi: Tüm dosyaları görün.
- 1 Hafta Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir hafta geçen dosyaları görün.
- 1 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir ay geçen dosyaları görün.
- 6 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden altı ay geçen dosyaları görün.
- 1 Yıl Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir yıl geçen dosyaları görün.

Yerel Depolama

PC depolama alanını yönetin.

Ham Veri	Seçili ham verileri PC'den kaldırın. Ham veriler zaten clouda yüklendiyse, istediğiniz zaman indirip kullanabilirsiniz.
Sonuçlar & Ekler	Mesh, görseller ve videolar gibi sonuç ve ek dosyalarını bilgisayardan kaldırın. Bu dosyalar zaten clouda yüklenmişse, istediğiniz zaman indirebilir ve kullanabilirsiniz.
Diğerleri	Sistemi ve diğer programları çalıştırmak için kullanılan dosyalara bakın. PC'nizin depolama alanını gösterir. Bu dosyaları Medit Link'ten kaldıramazsınız.
Sil	Seçili dosyaları bilgisayardan kaldırın.

Cloud Depolaması

Cloud depolama alanını yönetin.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

62

CAD Türü	Tasarım için kullanmak istediğiniz CAD programını seçin. Program, seçiminize göre sonuçları ayarlayacak ve herhangi bir ek eksen hizalaması olmadan tasarıma devam etmenizi sağlayacaktır.
Dosyaları Şuraya Aktar	Sonuçları saklamak istediğiniz yolu belirtin.
Mesh Formatı	Nihai mesh dosyasının formatını belirtin.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Sıkıştır & Birleştir	Dosyaları Sıkıştır: Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırır. Bireysel Mesh Birleştirme: Maksilla veya mandibula için tüm sonuçları tek bir dosyada birleştirin. Birden çok dosyayı içe aktarmayan ve bunlarla çalışamayan bazı programları kullanırken, bu programlarda çalışmak için bunları birleştirebilirsiniz.
Aynı klasör veya dosyanın mevcut olduğu durumda sunulan seçenekler.	Hedef yolda aynı klasör veya dosya adının bulunduğu durumlar için varsayılan eylemi seçin. • Dışa aktarırken her zaman sor. • Yeni dosyayı dışa aktarın ve mevcut dosyaların üzerine yazın. Halihazırda saklanan dosya kaybolacaktır. • Bir klasör oluşturun ve dosyaları dışa aktarın
Klasör Adı Kuralı	Dosyaları dışa aktarırken bir klasör adı oluşturmak için kurallar tanımlayın. Belirlenen kurallar, klasör adlandırmaya uygulanacak ve dışa aktarılan dosya, oluşturulan klasöre kaydedilecektir. Kuralı ayarlamak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID
Dosya Adı Kuralı	Dışa aktarılan dosya adı için kuralları tanımlayın. Kuralı ayarlamak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID

Vaka Dönüştürme Aracı

Hesabın mevcut vakalarını dışa aktararak veya diğer hesaplardan aktarılan vakaları içe aktararak vakaları farklı hesaplar arasında taşıyabilirsiniz.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

Vakaları Dışa Aktarma

Şu anda oturum açmış olan hesabın durumlarını yerel bilgisayara aktarın.

1. Medit Link'i açın ve Ayarlar simgesine tıklayın.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Total Patients: 3500

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

+ New Patient

+ New Case

View Options

2. Sol taraftaki menüden "Vaka Dönüştürme Aracı" bölümünü seçin.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. Dışa Aktarma bölümünde bir dönem belirleyin veya gerekirse dışa aktarılacak vakaları arayın.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name

☒ Contains
☐ Equals

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

4. "Dışa Aktarılacak Dosyalar" bölümündeki listeden dışa aktarmak istediğiniz vakaları seçin.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Dosya Adı alanında vaka adını düzenleyerek dosya adını ayarlayın.
6. Seçilen vakaların dışa aktarılacağı hedef klasörü ayarlayın.
7. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
8. Dosyanın dışa aktarıldığı klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Dışa aktarılan vakalar .meditex dosya formatında kaydedilir.

Vakaları İçe Aktarma

1. Medit Link'i açın ve Ayarlar simgesine tıklayın.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box


Case Talk

Total Patients: 3500


All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	


2. Sol taraftaki menüden "Vaka Dönüştürme Aracı" bölümünü seçin.

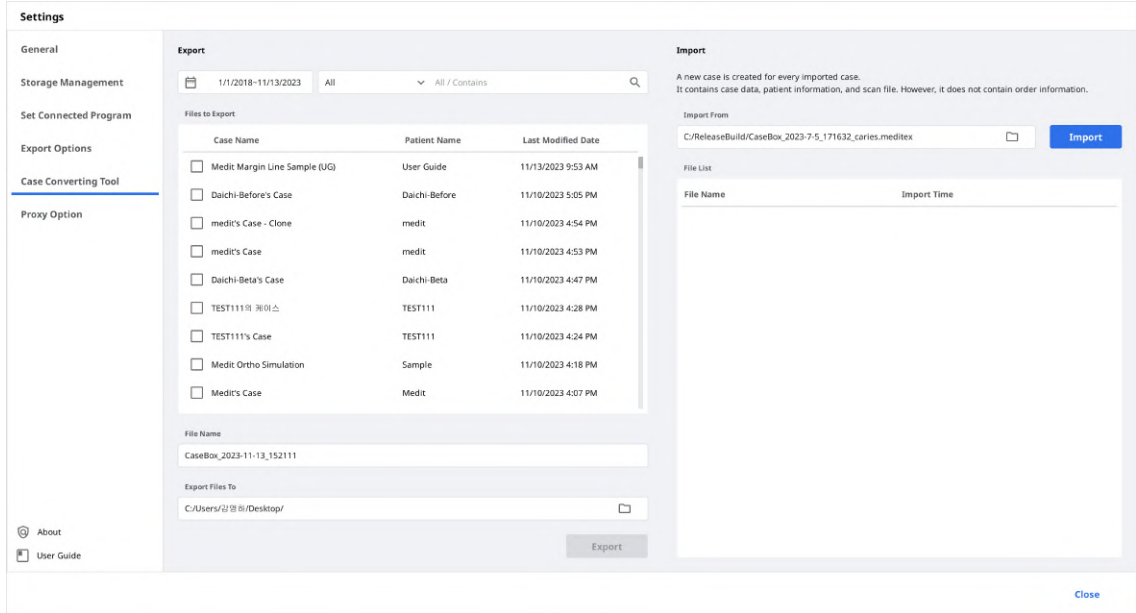

- İçe Aktarma bölümünde, içe aktarmak istediğiniz .meditex dosyasını bulmak için bilgisayarınızda klasör simgesine tıklayın.

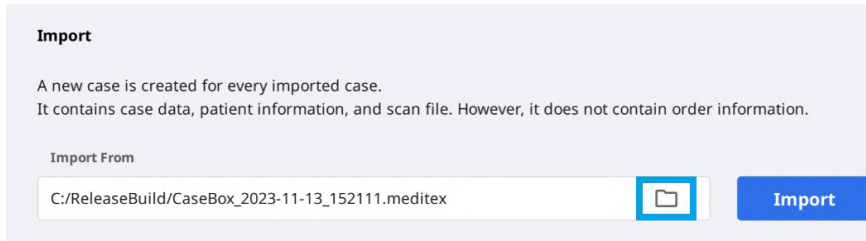

- “İçe Aktar” düğmesine tıklayın ve aşağıdaki listeden içe aktarılabilecek dosyaları kontrol edin.

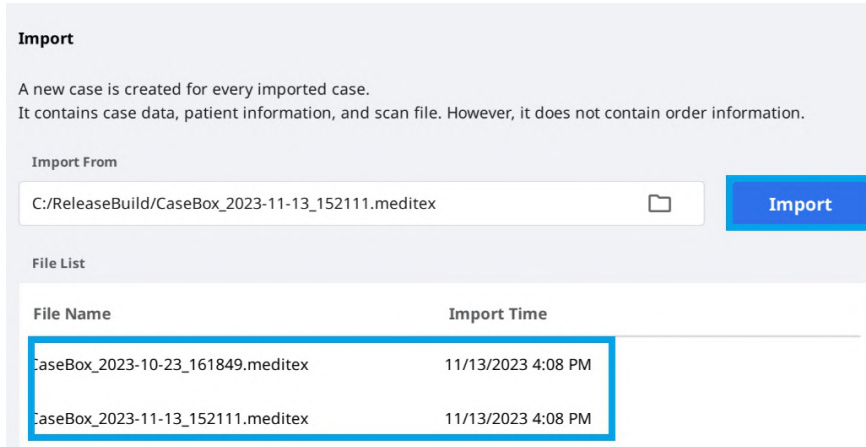

- İçe aktarılan vaka, Case Box'da (Klinik hesabı) veya Work Box'da (Lab hesabı) da görünecektir.

Proxy Seçenekleri

Bazı sınırlı ağ ortamlarında, ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Hakkında

Medit Link hakkında detaylı bilgi gösterir.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



Close

Kullanıcı Kılavuzu


Medit Link kullanım kılavuzuna erişin.

Kullanım kılavuzunu açmak için İnternet bağlantısı gerekir.

Menü

Dashboard

Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

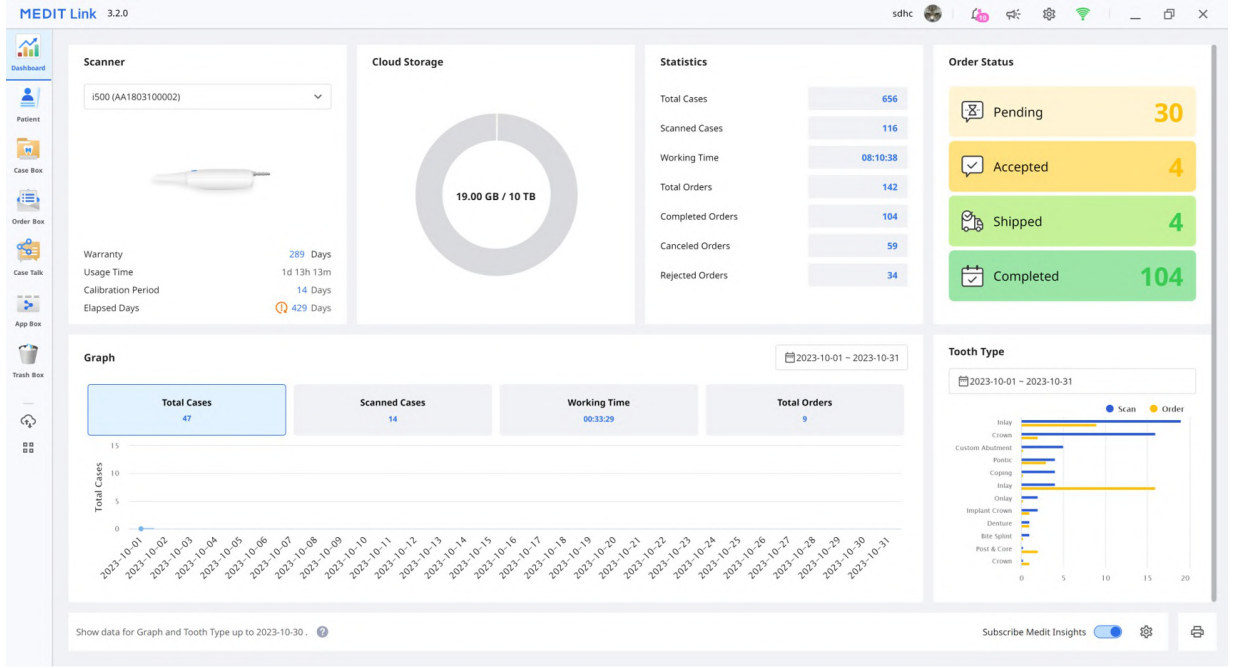

Dashboard ve Medit Insights hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Medit Link Web > Dashboard](#)'a bakın.

Patient

Patient menüsünde hastaları ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir veya birleştirebilirsiniz.

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Yeni Hasta Ekle

1. "Yeni Hasta"ya tıklayın.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. Yeni Hasta iletişim kutusunda gerekli bilgileri doldurun ve ardından "Kaydet"i tıklayın.

Hastayı Sil



Bir hastayı yalnızca hasta için vaka olmadığında silebilirsiniz.

1. Listedeki silinecek hastayı seçin.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

View Options

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. "Sil"i tıklayın.

Hastaları Birleştir

Birden çok hastanın tüm vakalarını tek bir hastada birleştirebilirsiniz.

1. Birleştirmek istediğiniz hastaları listeden seçin.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

View Options

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. "Hastaları Birleştir"i tıklayın.
3. Tüm vakaları birleştirmek istediğiniz hedef hastayı seçin.
4. Tüm vakalar hedef hastada birleştirilir ve hedef hastanın hasta bilgileri korunur.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Birleştirmeye devam etmek için "Uygula"ya tıklayın.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

6 Type Method Material Shade Favorites

7 Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

- 1 Vaka adını ve hasta adını gösterir.
- 2 Mevcut temel özellikleri sağlar: Tara veya Aç düğmesi, Sipariş düğmesi, uygulama simgeleri.
- 3 Mevcut sekmeleri gösterir: Form, Dosya Görüntüleyici.
- 4 Vakaları ve dosyaları yönetmek için işlevleri gösterir.
- 5 Seçilen tarama programı için form kaydı kullanıcı arayüzünü gösterir.
- 6 Kullanıcıların seçilen diş numarası için seçmeleri için tür/yöntem/materyal/ton bilgisi sağlar.
- 7 Seçili dişlere uygulanan tür/yöntem/malzeme/ton bilgilerini görüntüler.

Case Box/Work Box'daki Sekmeler

Form	Dosya Görüntüleyici
Form sekmesi, tür, yöntem, diř numaraları için materyal ve tarama seçenekleri gibi tarama işi için temel bilgileri girmek için bir kullanıcı arayüzü sağlar. Girdiğiniz bilgiler, bağılı tarama programına iletilir ve iş ortağınızla sipariş verirken sipariş bilgileri olarak kullanılır.	Tarama programları ve CAD tarafından oluşturulan sonuç dosyalarını görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Box/Work Box'daki İşlevler

Case Box/Work Box'da aşağıdaki işlevler mevcuttur.

	Vaka Durumu	Vakanın durumunu gösterir.
	Order Box/In Box'a Gidin	Başka bir boxta aynı vaka için kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Vaka Bilgileri	Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.
	Not & Etiketler	Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.
	Vaka Geçmişi	Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Sil	Vakayı silin. Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
	Kopyala	Case Box'ta mevcut vakanın bir kopyasını oluşturun. Tüm veriler klonlanan vakaya kopyalanacaktır. Bu özellik, aynı hasta için tedavi bilgilerinin çoğaltılmasına veya aynı bilgi veya dosyalarla ek bir sipariş yapılmasına yardımcı olur.
	Ekle	Dosyaları çeşitli biçimlerde ekleyin.
	Dışa Aktar	Tarama veya CAD sonuç dosyalarını yerel PC'ye aktarın. Dosyaları dışa aktarırken tercih ettiğiniz dosya biçimini seçebilirsiniz. Dışa aktarılan dosyalar daha ileri çalışmalar için CAD ve CAM yazılımında kullanılabilir.
	Paylaş	Paylaşmak için bir bağlantı oluşturun. Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir. Bağlantıyı herhangi biriyle veya yalnızca belirli kişilerle ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Özel bilgilerin güvenliğini sağlamak için bir PIN kodu veya bağlantı son kullanma tarihi ayarlanabilir.
	Destek Talebi Gönder	Bir destek talebi göndermek için bir Medit Yardım Merkezi sayfasına gidin.

Order Box/In Box

MEDIT Link 3.2.0 | wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Test)

Order | **File Viewer**

Order ID: 5996137

Patient Name: Occlusion Test | **Partner Name:** WonhoonChoi_Lab_Stage

Scan Date: 2023-04-20 08:15 | **Order Date:** 2023-04-20 08:15

Requested Delivery Date: 2023-04-27 | **Expected Delivery Date:** 2023-04-27

Memo:

Tags:

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Vaka adını ve hasta adını gösterir.
2	Sipariş yönetimi için işlevler sağlar (kabul etme/iptal etme; teslim etme/alma).
3	Mevcut sekmeleri gösterir: Sipariş, Dosya Görüntüleyici.
4	Vakaları ve dosyaları yönetmeye yönelik işlevleri gösterir: Vaka durumu, ayrıntılı bilgi için kısayollar, vaka bilgisi, not & etiketler vb.
5	Sipariş numarası, hasta adı, ortak adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve not & etiketler dahil olmak üzere siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
6	Sipariş edilen ürün bilgilerini ve teslimat durumunu gösterir.

Order Box/In Box'daki Sekmeler

Sipariş	Dosya Görüntüleyici
Sipariş numarası, hasta adı, hesap adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi, not ve etiketler gibi siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol edin.	Tarama/CAD işlemleri tarafından oluşturulan dosyaları görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üyeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki Case Talk aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.



Case Talk hizmeti internet bağlantısı gerektirir.

MEDIT Link 3.3.0 admin

Case Talk

2018-01-01 ~ 2024-04-23 Case Talk Name Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

1

Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.

App Box

App Box, temel tarama iş akışınızı tamamlayan ve üretkenliği artıran çeşitli eklenti programları sağlar. Dental cihazlar oluşturmak, tarama verilerini analiz etmek, konsültasyon sırasında size yardımcı olmak veya iş sürecinizi kolaylaştırmak için sağlanan uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz.

MEDIT Link 3.3.0 Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook! Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills Join Now

Explore Medit Resources News, tips, and expert insights on Digital Dentistry Visit Now

All Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

- Medit DCM Converter Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format Update
- Medit Smile Design Simulation of teeth movement for orthodontic cases Installed
- Medit Ortho Simulation Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... Install
- Action Gate (ヨシダ・Yoshid... Comprehensive dental PMS Install

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration Comprehensive dental PMS Install
- EasyRx Integration Universal orthodontic LMS Install
- Open Dental Integration Quality software for dental offices Install
- iie systems connector PRM specialized for orthodontics Install
- OneClick Integration App Osstem's easy-to-use PMS Install
- i-Pro Integration Comprehensive dental PMS
- LOGOSw Integration Add a link between LOGOSw and Medit Link
- DentalCAD Integration Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. Install
- Action Gate (ヨシダ・Yoshid... Comprehensive dental PMS Install
- Andcom Integration Convenient dental PMS

Hepsi


"Hepsi" sekmesi, Medit tarafından geliştirilen orijinal uygulamalar (Medit Apps) ve 3D baskı, CAD/CAM yazılımı gibi dijital diş hekimliğinin farklı sektörlerinden Medit'in ortaklarıyla entegrasyon uygulamaları olan ortak uygulamalar da dahil olmak üzere sağlanan tüm uygulamaların listesini gösterir.

Medit Apps

"Medit Apps" sekmesi yalnızca Medit tarafından geliştirilen orijinal uygulamaların listesini gösterir.

İndirilen

"İndirilenler" sekmesi, bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaların ve kullanıcı hesabı tarafından indirilme geçmişine sahip uygulamaların listesini gösterir.

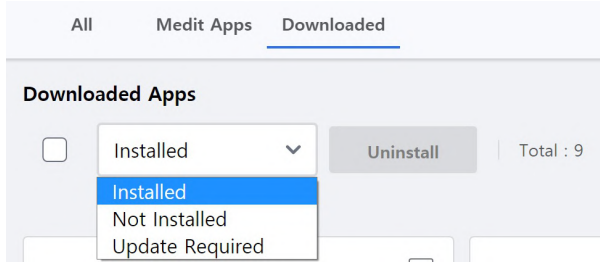

- **Yüklü:** Bu seçenek yalnızca kullanıcının o anda oturum açtığı bilgisayarda yüklü olan uygulamaları gösterir.
- **Yüklenmemiş:** Bu seçenek, diğer bilgisayarlarda yüklediğiniz uygulamaları görebilmenizi ve bunları hızlıca yükleyebilmenizi sağlar.
- **Güncelleme Gerekli:** Bu seçenek yalnızca mevcut bilgisayarda yüklü olan ve güncellenmesi gereken uygulamaları gösterir.

Trash Box

Trash Box, silinen vakaları geçici olarak depolar. Trash Box'daki herhangi bir vaka geri yüklenebilir veya kalıcı olarak silinebilir.

⚠ Dikkat

Trash Box'dan silinen veriler, bilgisayarınızdan ve sunucudan kalıcı olarak silinir ve kurtarılamaz.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_외출판트 46, 47's Case - Clone - Clone	외출판트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi, Medit Link'te vakaları yüklemenize ve indirmenize yardımcı olur. Ayrıca birden çok vakayı clouda yükleyebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

[illegible]

Yükle

Toplam Vaka / Seçilen Vakalar	Tüm/yüklenmesi gereken seçilen vakaların sayısını kontrol edin.
Tümünü Yükle	Tüm vakaları clouda yükleyin.
Hepsini İptal Et	Tüm yükleme isteklerini iptal edin.
	Vakayı clouda yükleyin.
	Vakanın yüklemesini iptal edin.
	Vakayı yüklemeyi tekrar deneyin.

İndir


Toplam Vaka / Seçilen Vakalar	Tüm/indirilmesi gereken seçilen vakaların sayısını kontrol edin.
Hepsini İndir	Tüm vakaları bilgisayarınıza indirin.
Hepsini İptal Et	Tüm indirme isteklerini iptal edin.
	Vakayı PC'ye indirin.
	Vakanın indirilmesini iptal edin.
	Vakayı indirmeyi yeniden deneyin.

İlgili Websiteler

My Info, Partners ve Membership gibi yalnızca Medit Link Web'de bulunan menülere doğrudan gidebilirsiniz. Medit Link Web menülerinin ayrıntılı açıklamaları için lütfen Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) ve [My Info](#)'ya bakın.

Tarayıcılar ve tarayıcı sırt çantaları gibi diğer Medit ürünleri için uzatılmış garantiler satın alabileceğiniz Medit'in çevrimiçi mağazası Medit Shop'a erişebilirsiniz.

Medit Link kullanımı hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Medit Yardım Merkezi, Medit Academy YouTube kanalı ve Medit Academy çevrimiçi eğitim platformu gibi Medit'in eğitici ve bilgilendirici kaynaklarına erişin.

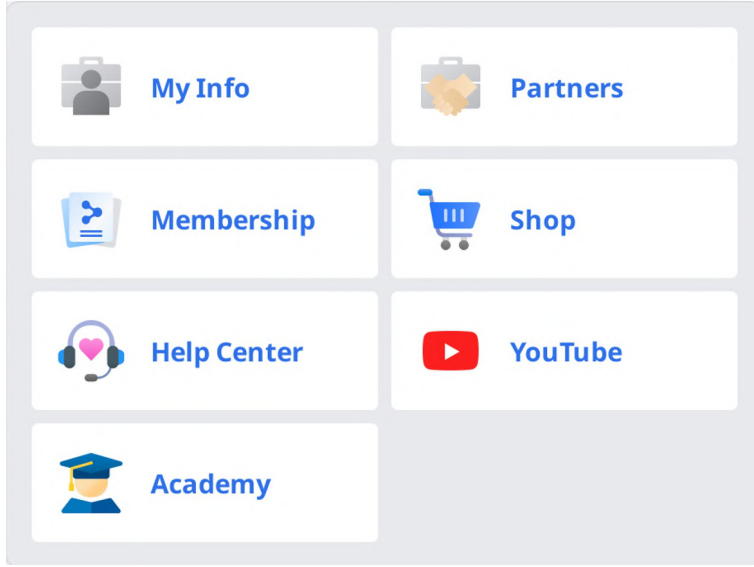

Dosya Görüntüleyici

Dosya Görüntüleyici, Medit Link'e bağlı programlardan elde edilen veriler ve kullanıcılar tarafından eklenen veriler dahil olmak üzere çeşitli verileri gruplandırır ve gösterir.


Verileri görüntüleme/gizleme, opaklığı ayarlama ve verileri silme gibi temel yönetim işlevlerini sağlar.

Aşağıdaki biçimlerdeki dosyaların ön izlemelerini destekler:

- 3D veri: STL, OBJ, PLY
- 2D görseller: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video dosyaları: MKV, MP4, AVI, WMV

Veri Ağacı

Veri ağacında vaka için tüm verileri gruplayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca verileri gösterebilir/gizleyebilir, şeffaflığı ayarlayabilir ve veri ağacından verileri silebilirsiniz.

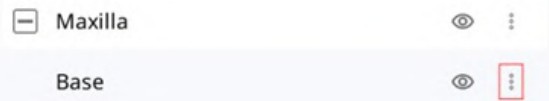	Göster/Gizle	Verileri görüntüleyebilir/gizleyebilirsiniz.
	Opaklık	Veri ağacındaki verilerden birine tıkladığınızda kaydırma çubuğu görünür. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek gösterilen verilerin opaklığını ayarlayabilirsiniz. 
	Daha Fazla	Daha Fazla simgesine tıklamak, mevcut ek özellikleri gösterir.  • Sadece Bunu Göster: Diğer tüm verileri gizler ve yalnızca mevcut verileri gösterir. • Gizle: Mevcut verileri gizler. • Kopya Oluştur: Verileri kopyalayın ve ekler grubuna ekleyin. • Dışa Aktar: Seçili dosyaları dışa aktarın. • Yeniden İsimlendir: Verinin ismini değiştirin. • Sil: Verileri siler.



Çevrimiçi olduğunuzda verileri yeniden adlandırabilirsiniz.

Model Kontrol Araçları

3D Model Kontrolü

	Pan	Modeli hareket ettirin.
	Döndür	Modeli döndürün.
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.
	Sığdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.
	Model Görüntüleme Modu	Doku Açık
		Doku Kapalı
	Izgara Ayarları (mm)	Izgara Açık
		Kaplama Açık
		Izgara Kapalı
		Verileri gerçek doku renklerinde gösterin.
		Verileri tek bir renkte gösterin.
		Izgarayı arka planda gösterin.
		Izgarayı modelin üzerine yerleştirin.
		Izgarayı gizleyin.

2D Görüntü Kontrolü


< >	Sonraki/Önceki Görüntü	Görüntüler arasında hareket eder.
	Düzenle	Görüntüyü düzenleyin.
	Sıkıştır/Yapıştır Penceresi	Görüntü penceresini ayırabilir ve istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz. Pencereyi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Pencere orijinal konumuna geri yüklendiğinde, varsayılan boyutuna geri döner.

İşlev Araçları

Görüntü Yakalama ve Notlar


Mevcut ekrandan 2D bir görsel görüntüsü yakalayın, üzerine çizim yapın veya not alın.


Notlarınızla birlikte dosya olarak kaydedebilir ve referans olarak gönderebilirsiniz.

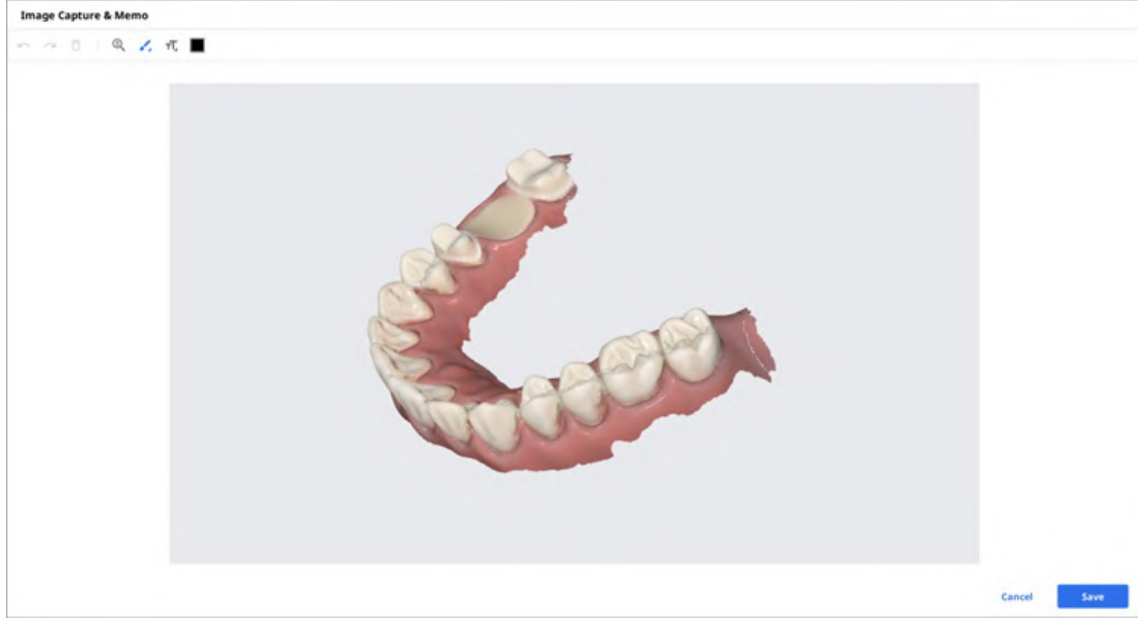

Ortho Capture

Görüntüleri mevcut izleme yönünde ve geçerli izleme yönünün üst/alt/sol/sağ tarafından yakalayın.

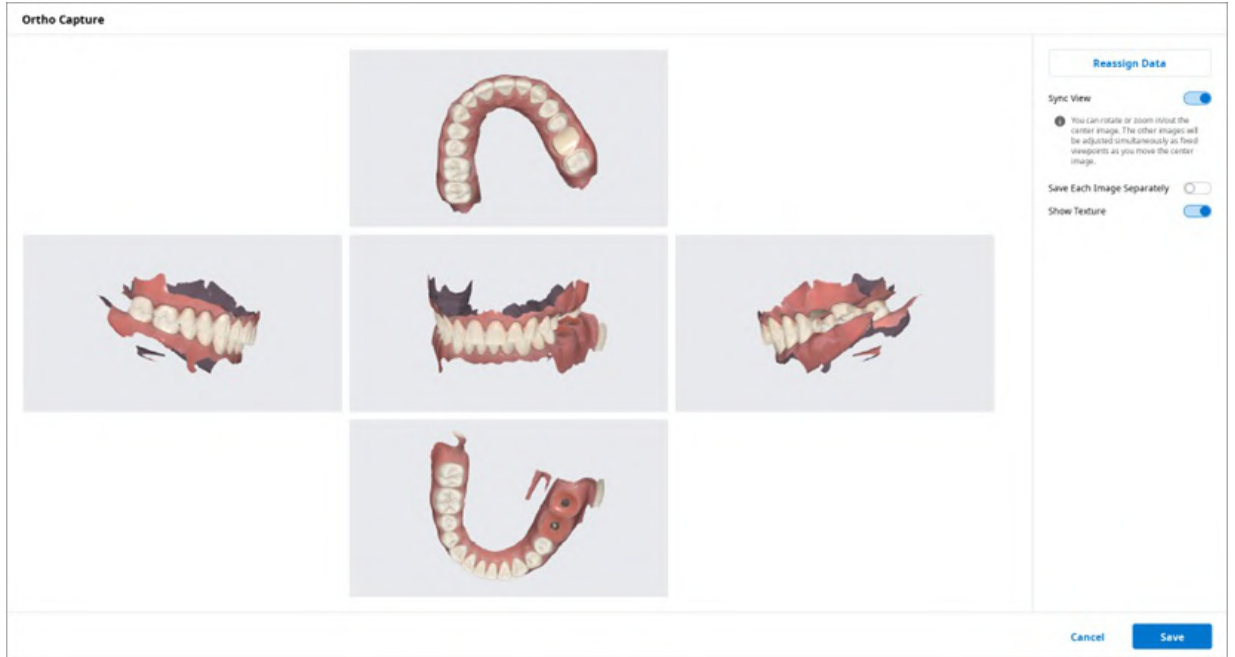

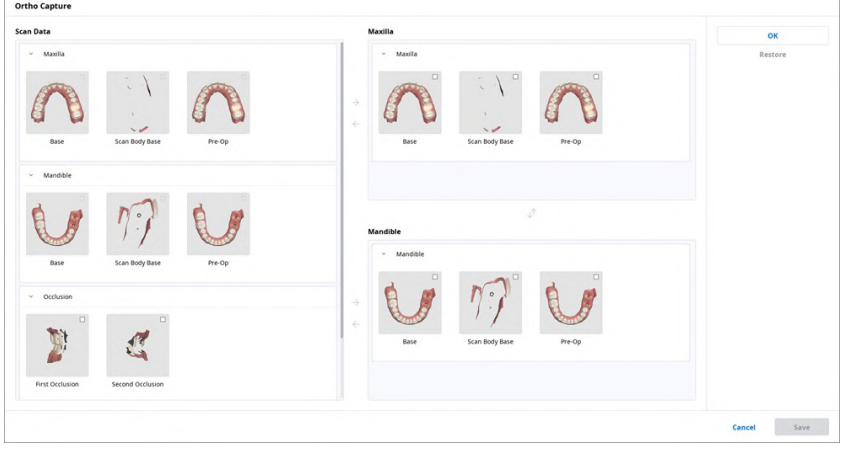Senkronizasyon Görünümü	Açık olduğunda, ortadaki görüntüyü döndürebilir veya yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için hareket ettirebilirsiniz. Ortadaki görüntüyü hareket ettirdiğinizde diğer görüntüler aynı anda sabit bakış açıları olarak ayarlanacaktır. Kapalıyken, tüm görüntüleri tek tek kaydırabilir, döndürebilir veya yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için hareket ettirebilirsiniz.
Her Görüntüyü Ayrı Ayrı Kaydet	Her görüntüyü yüksek çözünürlükte kaydedin.
Dokuyu Göster	Model için dokuyu açın/kapatın.
Verileri Yeniden Atama	Verileri Yeniden Ata özelliği ile maksilla/mandibula verilerini değiştirin. Ortho Capture'ın sonuç görüntülerini oluşturmak ve kullanmak için değiştirilen verileri kullanabilirsiniz.  • Tarama Verileri: Vaka için tarama verilerinin tümü gösterilir. • Maksilla: Maksilla için seçtiğiniz veriler görüntülenir. • Mandibula: Mandibula için seçtiğiniz veriler görüntülenir.


Boşlukları Doldur

3D mesh verilerindeki boş alanları doldurun.



Kırpma


Kırpma aracı, verileri düzenlemek için çeşitli araçlar sağlar.

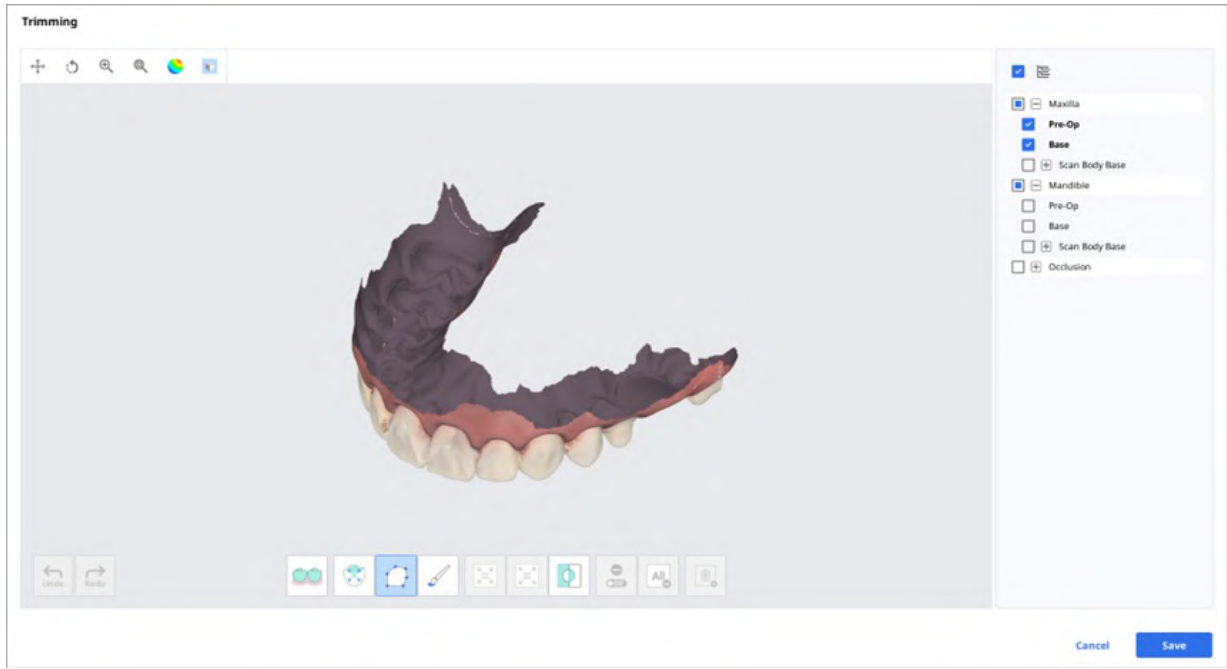

Seçilen 3D mesh veriler, pencerenin alt kısmında bulunan farklı araçlar kullanılarak düzenlenebilir.

Seçim		Akıllı Diş Seçimi	Diş eti kısımlarını dışarıda bırakarak, arktaki tüm dişleri otomatik olarak seçin. Not Bu işlev yalnızca "GPU Kullan" seçeneği açıkken Medit Scan for Clinics kullanılarak elde edilen tarama verileri için kullanılabilir.
		Akıllı Tek Diş Seçimi	Tek bir dişin alanını tek tıklamayla otomatik olarak seçin. Dişin üzerine tıklayabilir veya sürükleyebilirsiniz.
		Polyline Seçimi	Ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm varlıkları seçer.
		Fırça Seçimi	Ekrandaki serbest çizilmiş bir yol üzerindeki tüm varlıkları seçer. Yalnızca ön yüz seçilecektir. Fırça 3 farklı boyutta gelir.
Seçilen Alanın Ayarlanması		Seçili Alanı Sığdırmak için Küçült	Butona her bastığınızda seçili alanı küçültür.
		Seçili Alanı Genişlet	Butona her bastığınızda seçili alanı genişletir.
		Seçili Alanı Ters Çevir	Seçimi tersine çevirir.
Seçimi kaldırma		Seçim/Seçimi Kaldırma	Açık olduğunda, çeşitli araçlar kullanarak alanın seçimini kaldırır.
		Tüm Seçimi Temizle	Tüm seçili alanları temizler.
		Seçili Alanı Sil	Seçilen alandan verileri silin.

1. Alan seçim araçlarıyla kırmak istediğiniz alanı seçin.

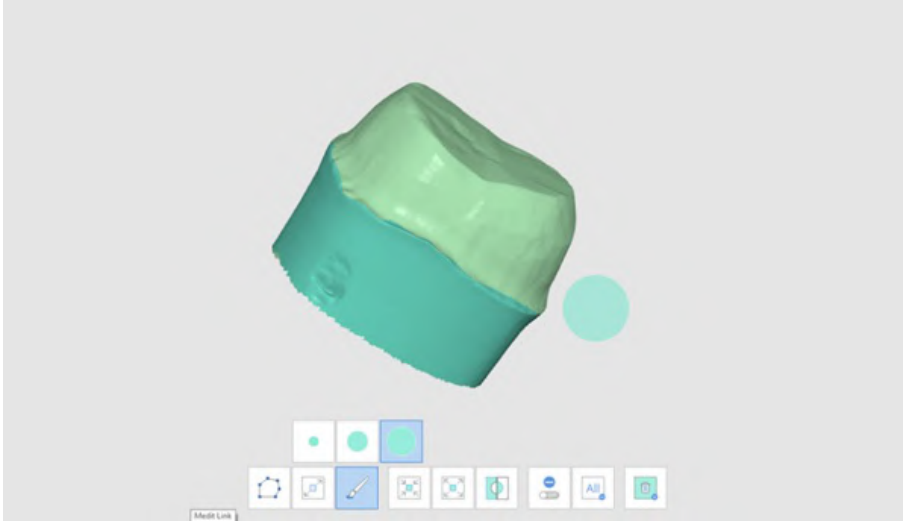


Not


Polyline kırpma aracı, ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm objeleri seçerken, fırça kırpma aracı yalnızca ön yüz verilerini seçer.

2. Aşağıdaki üç araçla seçimi tersine çevirebilir, küçültebilir veya genişletebilirsiniz.




- Seçili Alanı Ters Çevir

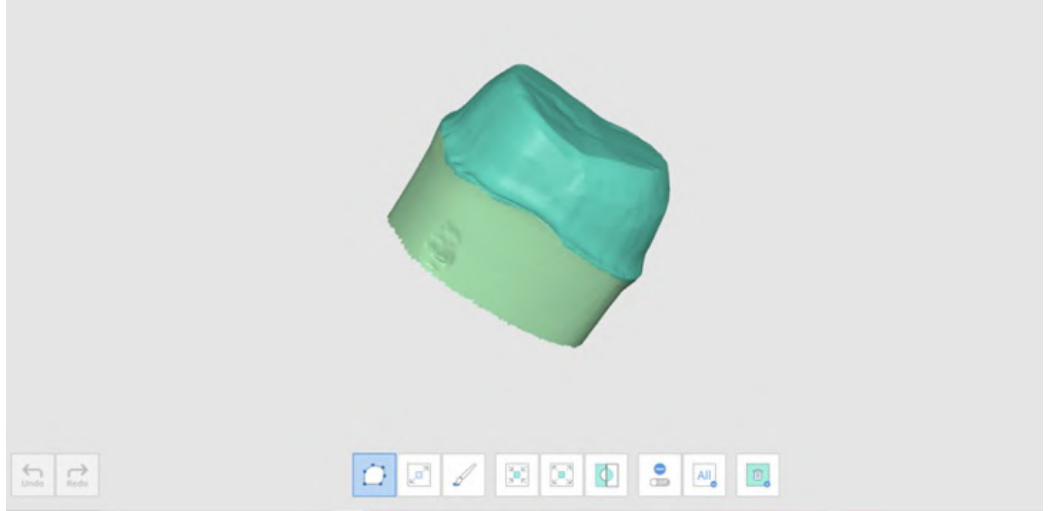

- Seçili Alanı Sığıdırmak için Küçült

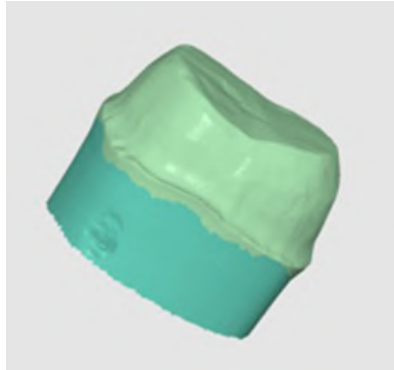


- Seçili Alanı Genişlet

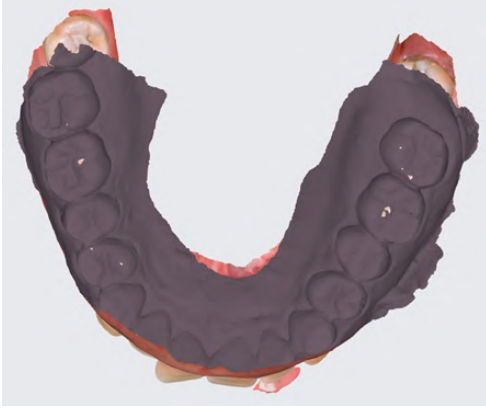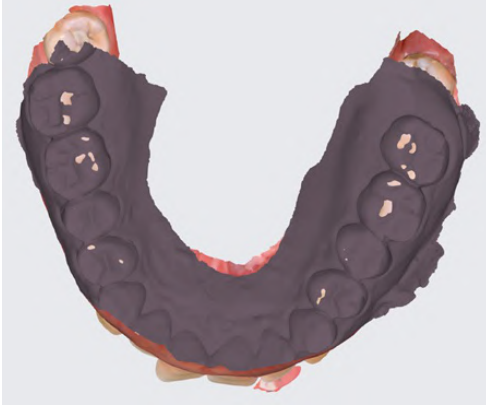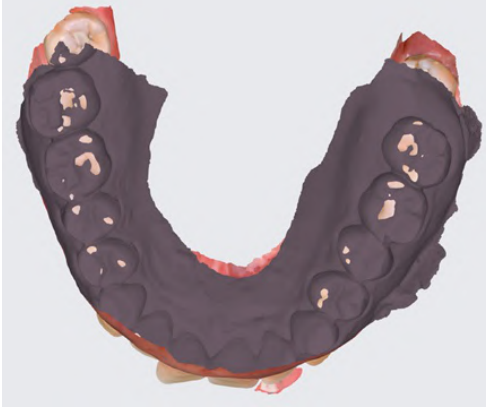Düşük	Compensation Level 	
Orta	Compensation Level 	
Yüksek	Compensation Level 	
Kapalı	Compensation Level 	

Mandibular Hareket

Üst ve alt dişler arasındaki dinamik oklüzal temasları görmek için Medit Scan for Clinics'te kaydedilen mandibular hareketleri oynatabilirsiniz.

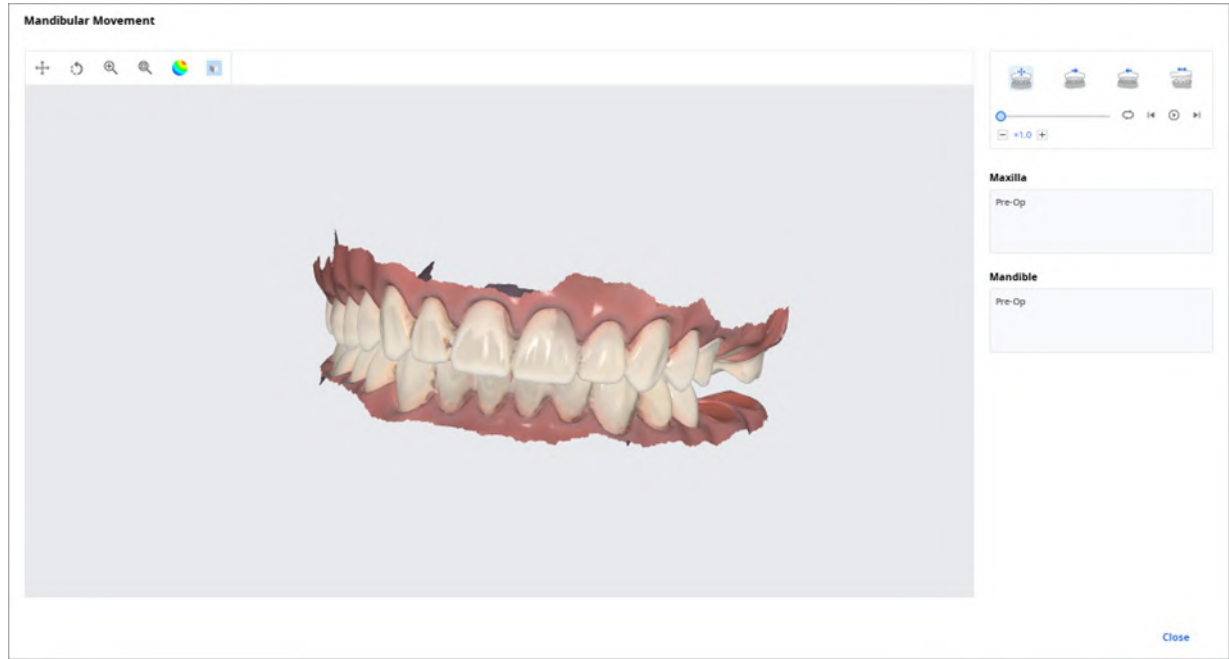

	Serbest Hareket	Serbest mandibular hareket kaydını oynatın.
	Sol Lateral Hareket	Mandibulanın sola doğru hareket kaydını oynatın.
	Sağ Lateral Hareket	Mandibulanın sağa doğru hareket kaydını oynatın.
	Protruziv Hareket	Mandibulanın ileriye doğru hareket kaydını oynatın.

Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme

Medit Scan uygulamasından birden fazla oklüzyon verisi sonucu alabilirsiniz.

Medit Link, sonuçları "Dosya Görüntüleyici" aracılığıyla yönetme işlevi de sağlar.

Birden çok sonuç nasıl yönetilir?


Kullanıcı Medit Scan for Clinics'ten çoklu oklüzyon sonuçları aldığında, Medit Link bir sonuç seçme seçeneği sunar.

Sonuçların listesi isme göre listelenir ve buradan bir öge seçebilirsiniz.

Seçilen model, "Veri Ağacı" ve "Model Görüntüleme Alanı"nda gösterilecektir.



Ok simgelerini kullanarak listeyi daraltabilir ve öđeyi deđiřtirebilirsiniz.

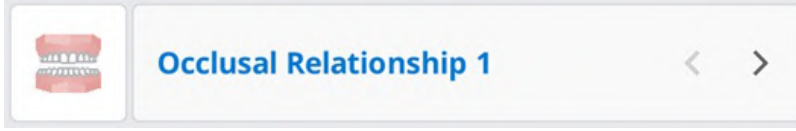

Görüntüleme Seçenekleri

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinin düzenlerini özelleştirmek için Görünüm Seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Durum Filtreleri

Vaka durumunu temsil eden her filtreyi gösterin veya gizleyin. Case Box/Work Box/In Box/Order Box'da ekranda gizli durum filtreleri görüntülenmez.

Durum filtreleri ile ihtiyacınız olan vakayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

- Yalnızca belli durumdaki vakaları görüntülemek için görüntülemek istediğiniz durumu tıklayabilirsiniz.
- Aynı anda birden fazla durum seçebilirsiniz.

Her box için aşağıdaki filtreleme seçenekleri mevcuttur:

Box	Durum Filtreleri
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Liste Öğeleri

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinde görüntülenecek öğeleri seçin. Kullanıcı ortamı için en iyi duruma getirmek üzere, liste görünümünde tablo öğelerinin sırasını değiştirebilir veya tablo sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Her box için aşağıdaki liste öğeleri mevcuttur:

Box	Liste Öğeleri
Patient	Hasta Adı / Hasta ID / Cinsiyet / Vaka Sayısı / Kayıt Tarihi / Doğum Tarihi
Case Box	Durum / Vaka Adı / Doğum Tarihi / Form Bilgileri / Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Name
Order Box	Durum / Vaka Adı / Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı / Talep Edilen Teslim Tarihi / Son Değişiklik
In Box	Durum / Vaka Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Son Değişiklik / Klinik Adı
Work Box	Durum / Vaka Adı / Hasta Adı / Form Bilgileri / Son Değişiklik / Talep Edilen Teslim Tarihi / Tarama Tarihi / Klinik Adı / Sipariş Tarihi

Görünüm Türü

Case Box'daki Galeri Görünümü ve Liste Görünümü arasından görünüm türünü değiştirin.

Her box için aşağıdaki görünüm türü seçenekleri mevcuttur:

Box	Görünüm Türü Seçenekleri
Patient	Liste Görünümü
Case Box	Liste Görünümü / Galeri Görünümü
Order Box	Liste Görünümü
In Box	Liste Görünümü
Work Box	Liste Görünümü

Gruplama

Listedeki vakaları seçilen seçeneğe göre sınıflandırmak ve yeniden düzenlemek için bir gruplama seçeneği belirleyin.

Her box için aşağıdaki gruplama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama Seçenekleri
Case Box	Yok / Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi
Order Box	Yok / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi
In Box	Yok / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi
Work Box	Yok / Talep Edilen Teslim Tarihi



Gruplandırma seçenekleri Patient, Case Talk ve Trash Box'da kullanılamaz.

Sıralama

Seçilen seçeneğe göre listedeki vakaların sırasını değiştirmek için bir sıralama seçeneği belirleyin.

Her box için aşağıdaki sıralama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama	Sıralama Seçenekleri
Patient	-	Hasta Adı / Hasta ID / Doğum Tarihi / Kayıt Tarihi / Vaka Sayısı
Case Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Hasta Adı	Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Lab Adı
Order Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı
	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
In Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Klinik Adı
Work Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Klinik Adı



Sıralama seçenekleri Case Talk ve Trash Box'da mevcut değildir.

Filtreleme ve Arama

Hastaya Göre Filtreleme

Vakaları hasta adına göre filtreleyin ve görüntüleyin. Sadece çalışmanız gereken hastaları filtreleyerek liste oluşturabilirsiniz.

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

1. Bir hasta adı girin.

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Aşağıdaki arama sonuçları arasından hastaları seçin.

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. listede yalnızca seçilen hastaların vakaları görüntülenir.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 08:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 08:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 08:14	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 02:05	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 03:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 04:41	2023-02-09 08:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 08:13	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 11:27	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 07:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 09:26	2023-02-09 09:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 08:50	2023-02-09 08:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 10:30	2022-10-11 05:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 10:28			

Tarihe Göre Filtreleme

Ayarlanan süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyin ve görüntüleyin.

1. Süre filtresini tıklayın.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Listedeki süreyi seçin.

- Hepsi: Tüm vakaları gösterir.
- Özel Aralık: Başlangıç ve bitiş tarihi özel olarak belirlenen bir dönem içinde son değişikliği yapılan vakaları belirtin.
- Bugün: İçinde bulunulan günde değiştirilen vakaları gösterir.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 7 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir haftada değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 30 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir ayda değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Bu Ay: İçinde bulunulan ayda değiştirilen vakaları gösterir.
- Önceki Ay: Önceki ayda değiştirilen vakaları gösterir.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Gelişmiş Arama Özellikleri

İstediğiniz bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için arama özelliklerinden yararlanın.

All Search / Contains

Her box için aşağıdaki Arama Kriterleri mevcuttur:

Patient	Hepsi, Hasta Adı, Hasta ID
Case Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Form Bilgileri, Lab Adı
Order Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Lab Adı, Sipariş ID
In Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID
Work Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Form Bilgileri, Klinik Adı, Sipariş ID
Case Talk	Case Talk Adı (İçerir), Hasta Adı (Eşittir)
Trash Box – (Klinik)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Lab Adı, Silen
Trash Box – (Lab)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Silen

Arama Kriterlerini seçip İçerir ve Eşittir mantığı arasında seçim yapabilirsiniz.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Vaka Oluřturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme

Vakalar Oluřturma

Case Box'da Vaka Oluřturma (Klinik)

1. Sağ üst köředeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

2. Hastanın adı ve vaka adı gibi temel bilgileri girin.
 - o Hasta listesinde olmayan bir isim girerseniz yeni bir hasta eklenecektir.
 - o Hasta listesinde bulunan bir isim girerseniz, listeden seçebilirsiniz.
 - o Mevcut bir hasta için bir vaka kaydediliyorsa, mevcut bir hastayı seçmek için Hasta Listesi simgesine tıklayın.



- o Hasta Listesi iletişim kutusunda yeni bir hasta kaydedebilir veya mevcut bir hastanın bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Patient List

Select a patient on the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	iB
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	iB
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	iB
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	iB
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	iB
☐	8888				0	2020-08-18		iB
☐	13				0	2020-08-20		iB
☐	14				0	2020-08-20		iB
☐	15				0	2020-08-20		iB

3. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de deęiřtirebilirsiniz.

4. Vaka kaydını tamamlamak ve taramaya devam etmek için "Kaydet & Tara"ya tıklayın.
 - **Kaydet:** Ana sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu, birden çok vakayı kaydederken kullanışlıdır.
 - **Kaydet & Tara:** Vakanın form bilgilerini kaydetmek için Form sekmesine gidin.

Work Box'da Vaka Oluşturma (Lab)

1. Sağ üst köşedeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Klinik adını girin veya seçin.
3. Hasta adını ve vaka adını girin. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de değiştirebilirsiniz.
4. İşin tamamlanma tarihini göz önünde bulundurarak beklenen teslim tarihini girin.
5. Vakayı kaydettikten sonra, ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Vakaları Düzenleme

Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)

1. Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

- Hastanın adını değiştirmek için "Ara" simgesine tıklayın. Doğrudan düzenlenemeyeceğini unutmayın. Bunun yerine, mevcut adı ile değiştirmek istediğiniz bir hasta adı bulabilir ve listeden hasta bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Mevcut olanla değiştirmek istediğiniz hastanın adını kontrol edin.
- Yeni bir hasta oluşturmak için "Yeni Hasta" butonuna tıklayın.
- Hasta hakkında kayıtlı bilgileri değiştirmek için "Düzenle" düğmesini kullanın.
- İşlemi bitirmek için "Uygula" butonuna tıklayın.

Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)

- Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Düzenleme tamamlandıktan sonra "Uygula" düğmesine tıklayın.



In Box'da sipariş yoluyla alınan vakaların bilgilerini düzenleyemezsiniz.

Vakaları Kopyalama

Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni vakaya ne tür bilgileri kopyalamak istediğiniz sorulacak.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Yalnızca form bilgilerini mi yoksa tüm verileri mi çoğaltacağınızı seçin.
4. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.

Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni bir vaka oluşturmak için tüm verilerin kopyasını oluşturun.
3. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.


Vakayı Silme

Vaka Silme (Klinik ve Lab)

1. "Sil" simgesini tıklayın.



2. Vakayı silmek için "Tamam"ı tıklayın.

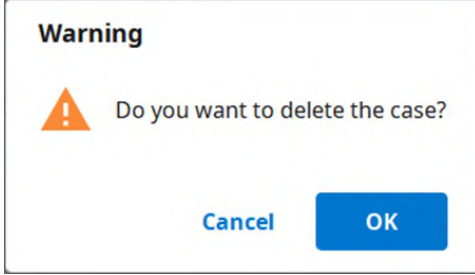

3. Silinen vakalar Trash Box'a taşınır ve gerekirse kurtarılabılır.

Form Bilgileri

Bağlı program ve tedavi tipine göre form bilgilerini girebilirsiniz.

Girdiğiniz bilgiler, tarama veya CAD programları üzerinde çalışmak ve sipariş vermek için temel bilgiler olarak kullanılacaktır.

Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin

1. Tedavi bilgilerini dişlere göre mi yoksa arklara göre mi gireceğinizi seçin.
2. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyseniz, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak sipariş listesine kaydedilir.
3. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin


1. Kullanmak istediğiniz tarama programını seçin.
2. Tarama stratejinizi tanımlayacak belirtecek şu seçeneklerden birini seçin: Dişler/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Yöntemler, seçilen tarama programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Diş	O	O
Ark	O	O
Flexible Multi-Die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Tarama işlemi için diş, ark veya day numaralarını seçin.
5. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyseniz, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak listeye kaydedilir.
6. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

Dişleri Köprüye Bağlama

Aynı malzeme birden çok komşu dişe uygulandığında birden çok dişi bir köprüye bağlayabilirsiniz. Birleştirmek veya bağlantısını kesmek için seçilen dişlerin yanındaki köprü simgesine tıklayın.

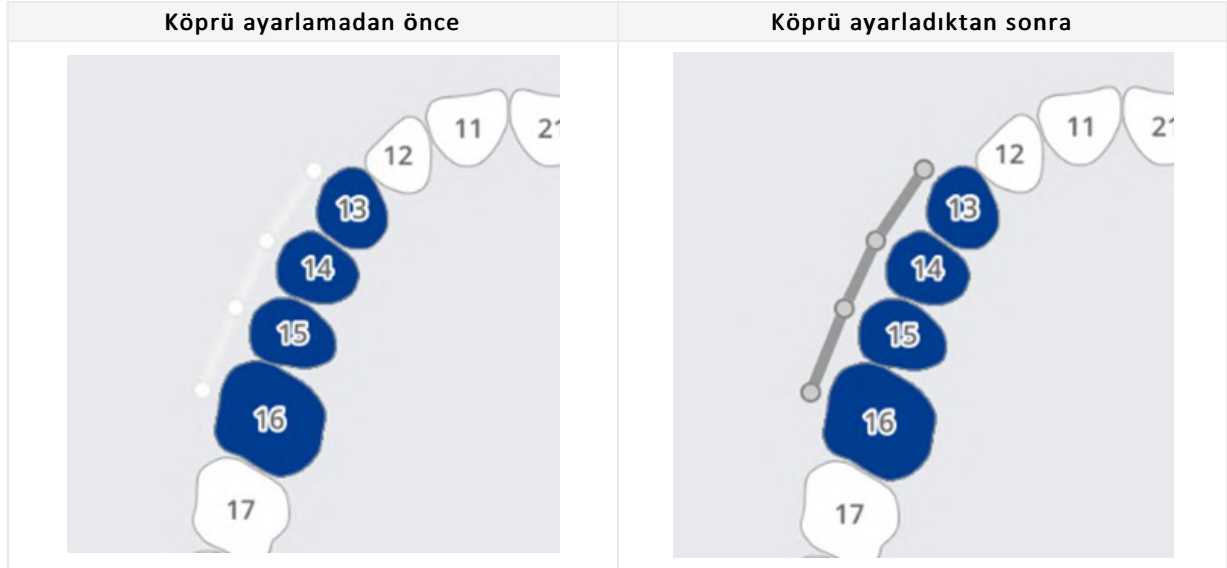

Tarama Seçeneklerini Ayarlama

Üzerinde çalıştığınız programa bağlı olarak çeşitli tarama seçenekleri sunulur.

Seçilen tarama seçenekleri her bir tarama programına aktarılır.

Medit Scan for Labs

Genel seçenekler

	Komşu Dişler	Preparasyonu yapılmış dişleri ve komşu dişleri işaretleyin ve bu bilgileri tarama programına aktarın.
	Antagonist	Antagonisti otomatik olarak işaretler ve bu bilgiyi tarama programına aktarır.
	Artikülâtör	Tarama programında artikülâtörü seçmek için seçenekleri görüntüleyin.
	Hareket İşaretçisi	Tarama programında "Çene Hareketi" tarama stratejisinin kullanılmasına izin verir.

Dişlere göre seçenekler

	Tarama Gövdesi	Tarama programında tarama gövdelerini taramak için bir strateji belirlemeye izin verir.
	Pre-Op Taraması	Tarama programında bir pre-op modeli taramak için bir strateji belirlemeye izin verir.
	Wax-Up Taraması	Tarama programında wax-upların taranması için bir strateji belirlemeye izin verir.

Favorilere Ekleme

Bir ürünü favori olarak kaydederek hızlıca seçebilirsiniz.

Kayıtlı favoriler listesi şablon olarak yönetilir ve dışa aktarma ve içe aktarma özellikleri aracılığıyla paylaşılabilir.

Favorilere Ekle

1. Diş numarasını seçin.

2. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Tür – Yöntem – Materyal – Ton, hepsi seçilmese bile favori olarak kaydedilebilir.
3. "Yıldız" simgesini tıklayın.

4. Dış numarası hariç, seçilen parametrelerin bir kombinasyonu, favori arama listenizde listelenir.

Favori Şablonları Yönetme

Farklı şablon türlerini kaydedebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ekle	Yeni bir şablon ekleyin.
Yeniden İsimlendir	Mevcut şablonu yeniden adlandırın.
Sil	Mevcut şablonu silin.
Dışa Aktar	Mevcut şablonu bir dosyaya aktarın.
İçe Aktar	Bir şablon dosyasını içe aktarın.

Tarama/CAD üzerinde çalışma

Tarama Süreci

Girilen bilgilere göre taramaya devam edebilirsiniz.

1. Tedavi bilgilerini girin/kaydedin ve gerekli tarama seçeneklerini seçin.
2. Pencerenin sağ üst köşesindeki "Tara" butonuna tıklayın.

CAD Süreci

Medit Link, Medit Link'i DentalCAD'e bağlamak için DentalCAD entegrasyon uygulamasını sağlar.

1. DentalCAD Integration uygulamasını App Box'a yükleyin.
2. Vaka ayrıntılarına gidin ve Hızlı Başlatıcı'da DentalCAD Integration uygulama simgesine tıklayın.
3. Açılır iletişim kutusunda PC'nizde yüklü olan DentalCAD uygulamasının yolunu belirtin.
4. Tarama işlemindeki vakaya ait detayları girin ve DentalCAD Integration uygulaması simgesine tıklayın. Bu işlem, bir dentalProject dosyası oluşturmak için bir iletişim kutusu açacaktır.
5. DentalCAD için form bilgilerini kaydedin ve CAD programını açmak için "Aç"a tıklayın.
6. DentalDB Integration uygulamasını yüklerseniz CAD sonuçları otomatik olarak exocad'da belirtilen kaydetme yoluna iletilecektir. (Yalnızca lab hesapları)


Eklenti Uygulamalardan Yararlanma

Hızlı Başlatıcı Eklentisi

Hızlı Başlatıcı'da yüklü uygulama simgelerine tıklayarak çeşitli eklenti uygulamalarını doğrudan çalıştırabilirsiniz. Uygulama simgelerinin sırasını sürükleyerek değiştirebilirsiniz.



Uygulama Başlatıcı Yönetimi

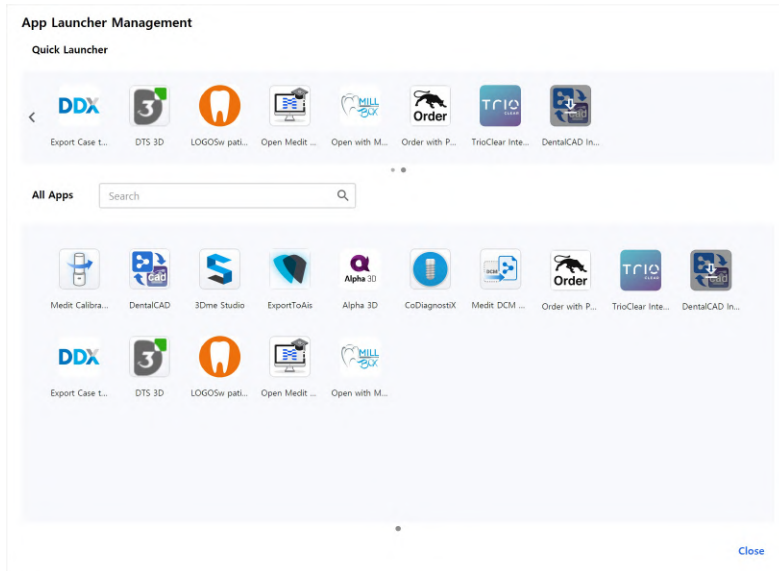

Hızlı Başlatıcı

Hızlı Başlatıcı'da hangi uygulamaların görüneceğini tanımlayabilirsiniz. Uygulama simgelerinin sırasını sürükleyerek değiştirebilir veya benzer uygulamaları bir arada gruptandırıp organize etmek için klasörler oluşturabilirsiniz.

Tüm Uygulamalar

Yüklediğiniz tüm uygulamalar gösterilir. Uygulamayı Hızlı Başlatıcı'ya eklemek için bir uygulama simgesine sağ tıklayabilirsiniz. İçerik menüsüne sağ tıklayarak uygulamayı çalıştırmayı, yüklemeyi veya kaldırmayı da seçebilirsiniz.

Sonuç Dosyalarını Alma

Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktar

Medit Link, sonuçları siparişler aracılığıyla ortaklarla paylaşmanın yanı sıra, dışa aktarma işlevini kullanarak sonuç dosyalarınızı istediğiniz dosya formatında saklamanıza da olanak tanır.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

Dosyaları Şuraya Aktar	Sonuç dosyalarını depolamak istediğiniz yolu belirtin.
Klasör Adı	Sistem yeni bir klasör oluşturur ve tüm sonuç dosyalarını bu klasörde saklar. Varsayılan klasör adı, adlandırma kuralına göre belirlenir. Ancak klasör adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Klasör Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
Dosya Adı	Sonuç için dosya adını ayarlayın. Adlandırma kuralı, varsayılan dosya adını ayarlar. Ancak dosya adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Dosya Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
Tür	Kullanmak istediğiniz tasarım programını seçin. Medit Link, seçiminize göre dosyaları otomatik olarak ayarlayacak ve ek eksen hizalamasına ihtiyaç duymadan tasarıma devam etmenizi sağlayacaktır.
Mesh Formatı	Mesh dosyasının formatını belirtin.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Dosyaları Sıkıştır	Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırın.
Bireysel Mesh Birleştirme	Maksilla veya mandibulanın sonucunu bireysel dişle birleştirin. Bir programa birden fazla dosya aktarmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanışlıdır.
Tüm Oklüzal İlişkiyi Dışa Aktar	Tarama uygulamasından birden fazla oklüzal sonuç oluşturulduğunda, tüm oklüzal sonuçları aynı anda dışa aktarabilirsiniz.
Vaka Bilgilerini PDF Olarak Kaydet	Vaka bilgilerini sonuçla birlikte PDF olarak kaydedin.

Sonuç Dosyalarını Vaka Listesinden Dışa Aktarma

Case Box ve Work Box'daki vaka listesinin üstündeki "Dışa Aktar" seçeneği ile bir vakanın veya birden fazla vakanın sonuç dosyalarını aynı anda dışarı aktarabilirsiniz.

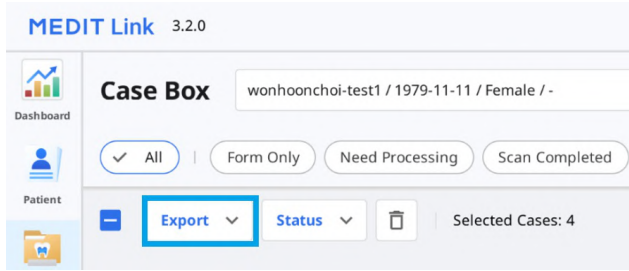

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Sonuç dosyalarını dışa aktarmak istediğiniz tüm vakaları listeden seçin.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Export Status Selected Cases: 4

Status	Patient Name	Case Name	Form Information
✓ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
✓ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
✓ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
✓ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. "Dışa Aktar"ı tıklayın ve "Sonuç Dosyaları"nı seçin.

Export

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Hedef klasörü, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export



Birden fazla durum için dosyalar dışa aktarılırken "Klasör Adı" ve "Dosya Adı" alanları düzenlenemez. Klasör adı ve dosya adı, Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki "Klasör Adı Kuralı" ve "Dosya Adı Kuralı" seçenekleri için belirlediğiniz kurallara göre otomatik olarak oluşturulur.

5. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
6. Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question


 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Sonuç Dosyalarını Dosya Görüntüleyiciden Dışa Aktarma

Dosya Görüntüleyici sekmesinin sağ üst köşesindeki "Dışa Aktar" simgesiyle bir vakaya ilişkin tarama sonucu dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

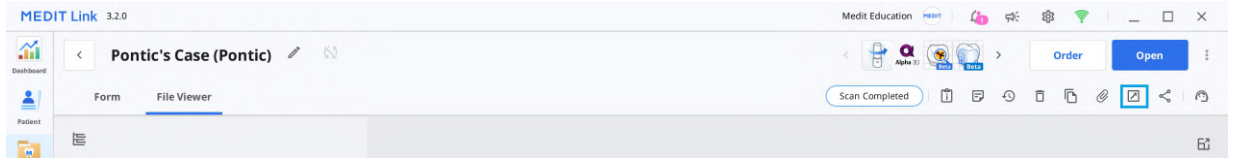

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Listedeki bir vaka açmak için tıklayın.
3. Dosya Görüntüleyici sekmesinin sağ üst köşesindeki "Dışa Aktar" simgesini tıklayın.

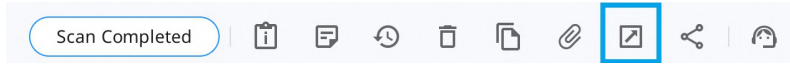

4. Hedef klasörü, klasör adını, dosya adını, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

5. "Dosya Listesi" sekmesinde gereksiz dosyaların seçimini kaldırarak vaka için gerekli dosyaları seçebilirsiniz.

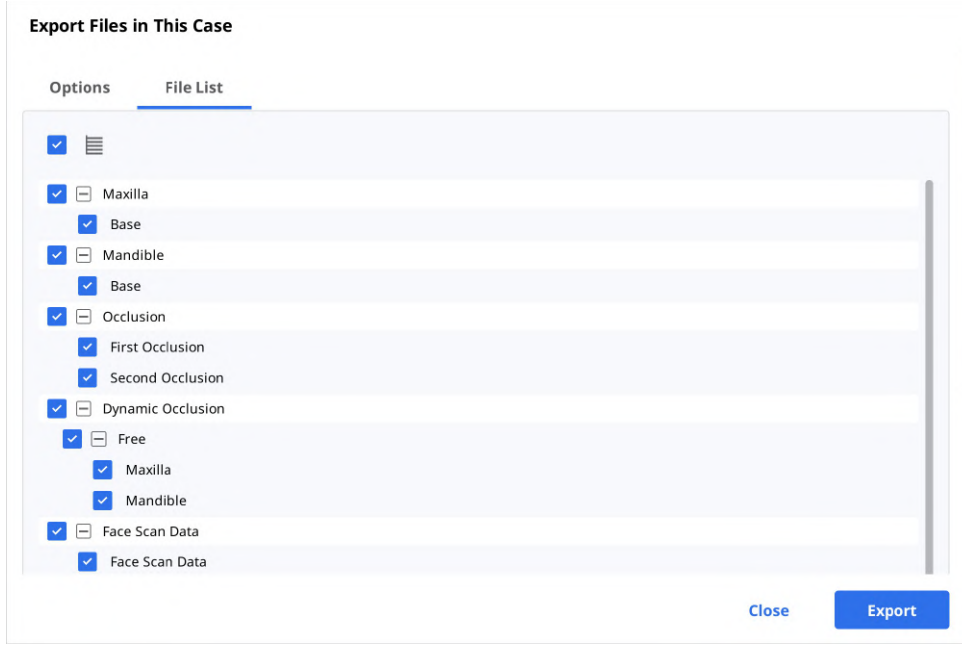


6. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
7. Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

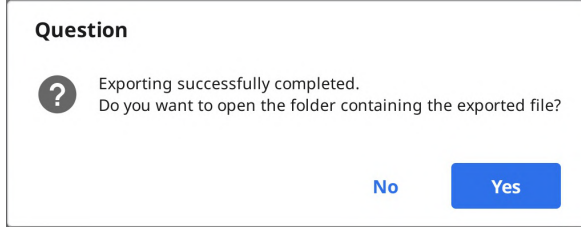


Sonuç Dosyalarını Veri Ağacından Dışa Aktarma

Dosya görüntüleyicideki genişletilmiş menüden bir dosyayı veya belirli bir veri grubundaki dosyaları dışa aktarabilirsiniz.

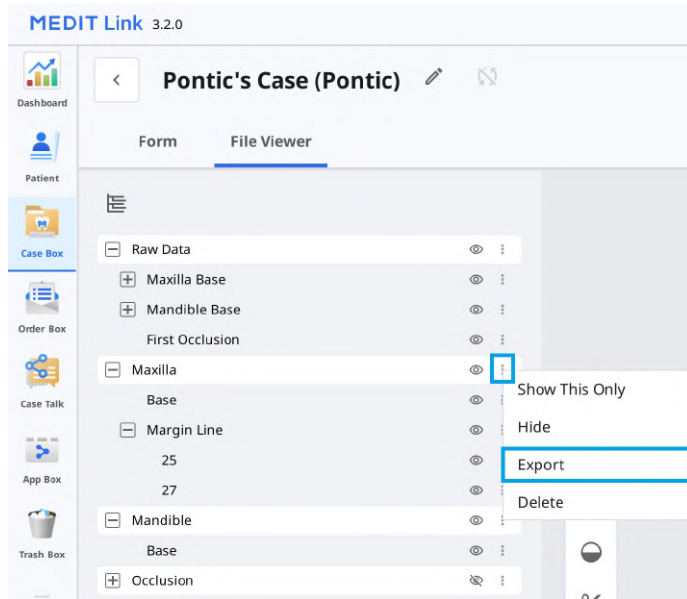

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Listedeki bir vaka açmak için tıklayın.
3. Dosya Görüntüleyici sekmesinde, veri grubunun veya veri ağacındaki bir varlığın yanındaki üç nokta simgesini tıklayın.

4. Ardından "Dışa Aktar"ı tıklayın.

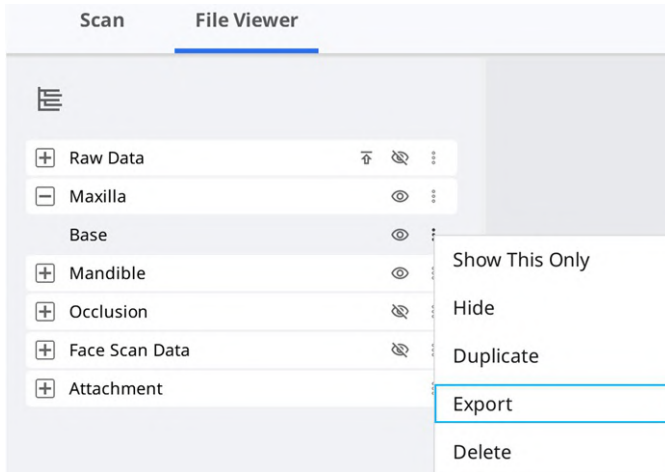

5. Hedef klasörü, klasör adını, dosya adını, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

6. Dosya Listesinde yalnızca veri ağacında seçtiğiniz dosyaların seçildiğini görebilirsiniz.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
 - ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

- "Dışa Aktar"ı tıklayın.
- Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar

Medit Link, vaka listesini CSV biçiminde dışa aktarma işlevi sağlar.

Vaka listesini temel bilgilerle dışa aktarabilir ve vakaları kolayca yönetebilirsiniz.

- Case Box, Order Box, In Box veya Work Box'a gidin.
- Dışa aktarmak istediğiniz vakaları seçin.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female f- +2

Export Status Selected Cases: 4

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

- "Dışa Aktar"a tıklayın ve "Vaka Listesi (gösterildiği gibi)" veya "Vaka Listesi (tüm öğelerle birlikte)" seçeneğini seçin.

Export Status

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

Not

Vaka Listesi (gösterildiği gibi): Ekranda o anda görüntülenen öğelerle birlikte vaka listesini dışa aktarın. Öğeleri istediğiniz gibi göstermek veya gizlemek için Görünüm Seçenekleri > Liste Öğeleri'ne gidin.

Vaka Listesi (tüm öğelerle birlikte): Durum, Vaka Adı, Doğum Tarihi, Form Bilgileri, Son Değişiklik, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi ve Lab Adı dahil tüm öğeleri içeren vaka listesini dışa aktarın.

4. Yolu ve dosya adını tanımlayın, ardından listeyi kaydedin.
5. Vaka listesi CSV dosyası olarak kaydedilir.


Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar

Medit Scan for Clinics kenar boşluğu çizgisini oluşturmak için bir işlev sunar ve Medit Link kenar boşluğu çizgisi CAD programına aktarabilir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma

Genel olarak, Medit Link kenar boşluğu çizgisini renkli olarak dönüştürür ve sonucu maksilla veya mandibula ile birlikte dışa aktarır. Renk bilgisini referans alarak, CAD'lerinde kenar boşluğu çizgisini oluşturabilirsiniz.

Örnek:

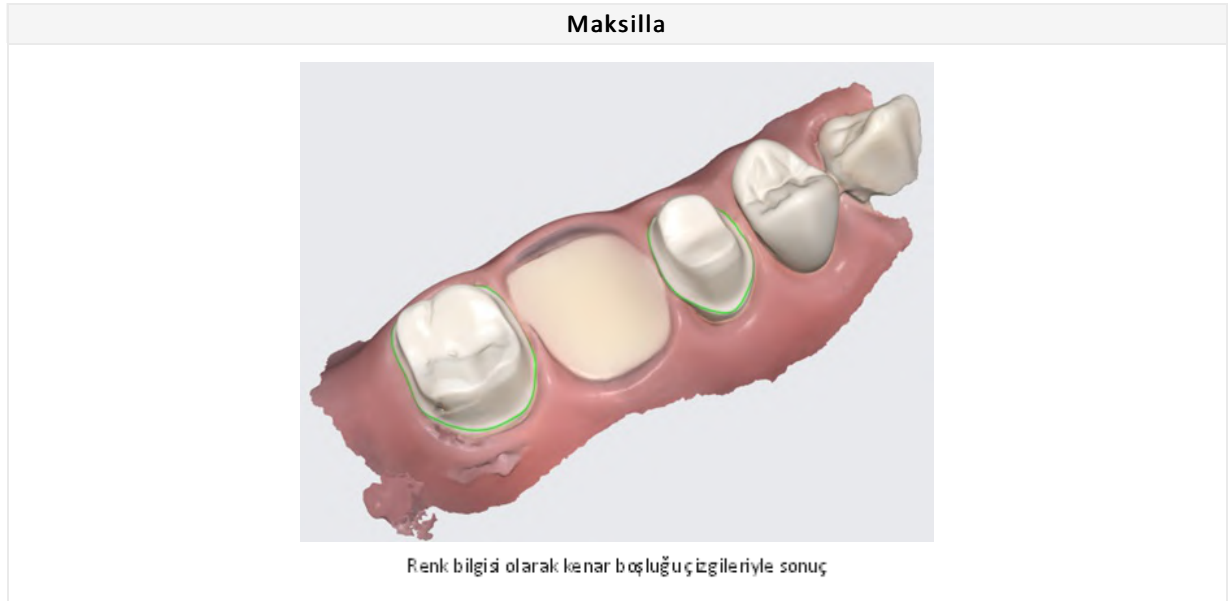

Not

Bu özellik meditMesh, OBJ ve PLY gibi renk bilgisi içeren formatlarda mevcuttur. Kenar boşluğu çizgisi STL'ye dönüşmez.

Not


Tür > 3Shape bu özelliği desteklememektedir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma

exocad durumunda, Medit Link, kenar boşluğu çizgisini doğrudan exocad'a aktarılabilen “~margin.xyz” dosyasına aktarır.

Bu dosyayı ek iş yapmadan exocad'da kullanabilirsiniz.

Örnek:

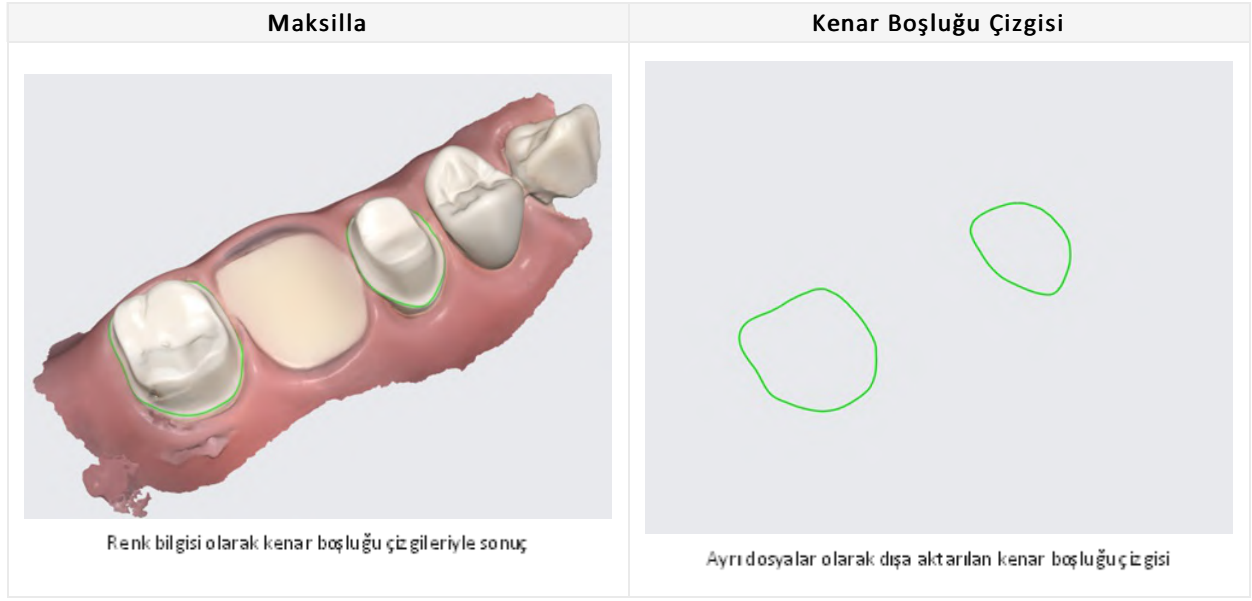

Medit Link Web'den Dosyaları İndirme

Medit Link, indirme işlevini sağlar.

Sonuç dosyalarına Medit Link uygulamasını yüklemeyen ulaşmak isterseniz, dosyaları Medit Link web servisinden indirebilirsiniz.




Dosyaları webden indirmek için veriler Medit Cloud'a yüklenmelidir.

İndirme işlevi, Medit Link web hizmetinin aşağıdaki menülerinde mevcuttur.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Sağ üstte "İndir" düğmesini bulabilirsiniz.

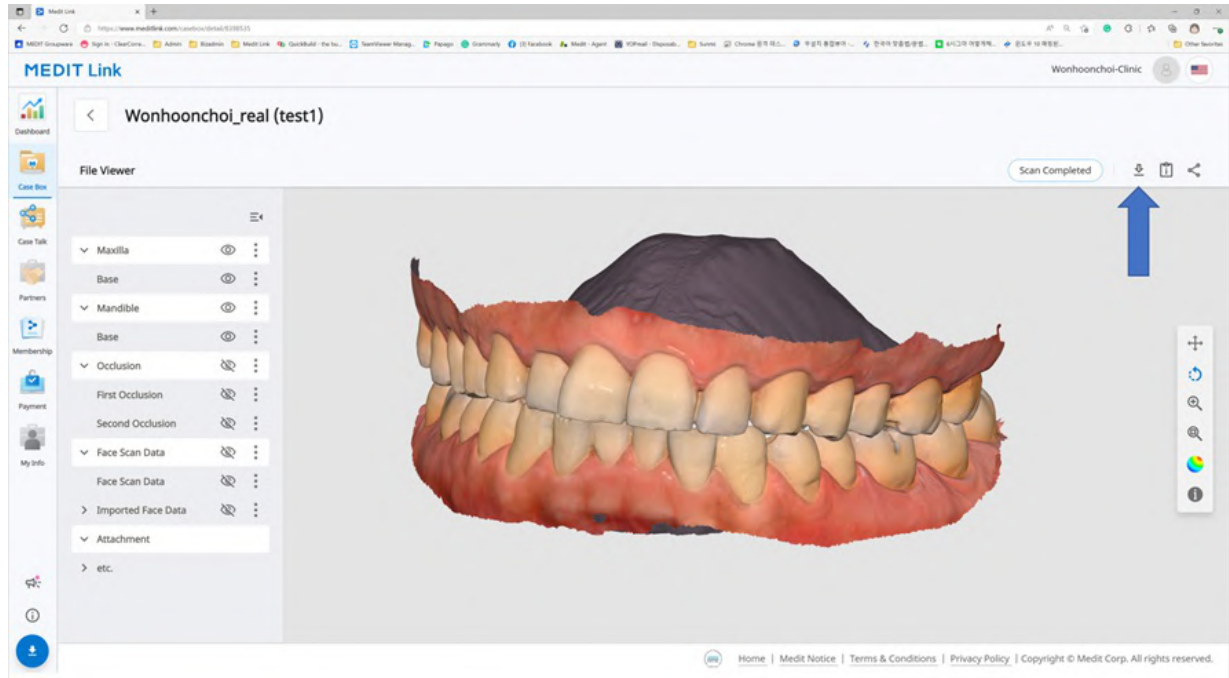

Web Viewer

Case Talk kullanarak vakayı paylaştığınızda, indirmeye izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

“İndirme İzni Ver” seçeneğini işaretleyip vakayı paylaşırsanız, paylaşılan bağlantıya bağlanan tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Web Viewerda, sağ üstte "İndir" simgesini bulabilirsiniz.

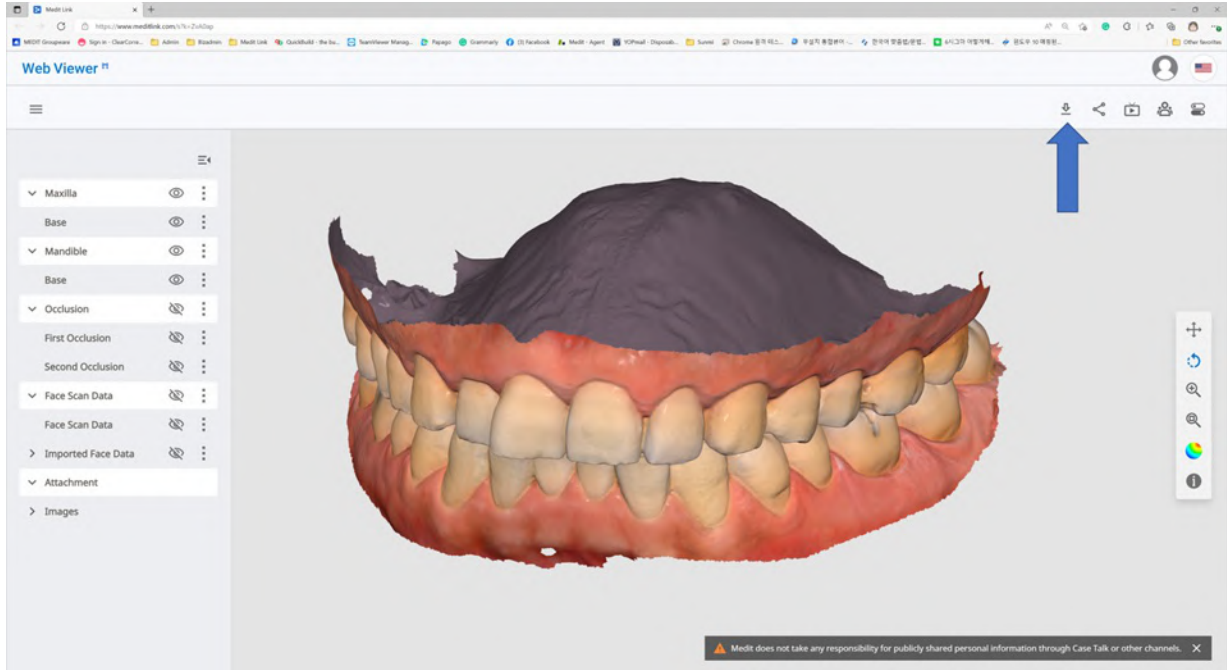

1. "İndir"i tıklayın.



2. İndirme iletişim kutusundan mesh formatını seçin.

Download [Premium Feature](#)

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) [OK](#)

3. Ardından "Tamam"ı tıklayın.

Vakaları Sipariş Etme/Yönetme

Bağlı programlardan alınan ve kullanıcı tarafından eklenen verilerle kolayca vaka siparişi verebilirsiniz.

Vaka Sipariş Etme

Case Box'ta ortaklarınız için sipariş verebilirsiniz.

1. "Sipariş" butonuna tıklayın.
2. Siparişiniz için gerekli bilgileri kontrol edin.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. Bir ortak seçin.
4. Sipariş Listesi sekmesinden ürün bilgilerini kontrol edin.
 - Hasta adını paylaşıp paylaşmayacağınıza karar verebilirsiniz.
5. Dosya Listesi sekmesinden sipariş edilecek dosyaları kontrol edin.
6. İstedığınız teslim tarihini giriniz.
 - Varsayılan, sipariş tarihinden 7 gün sonra olarak ayarlanmıştır.
7. Belirli ayrıntıların ana hatlarını çizmek için ortağınıza not ve etiketler ekleyebilirsiniz.
8. Tarama uygulamasından çok sayıda oklüzal sonuç oluşturulduğunda, "Tüm Oklüzal İlişkiyi Sırala" seçeneğini işaretleyerek tüm oklüzal sonuçları tek seferde gönderebilirsiniz.
9. Siparişinize devam edin.

Siparişi Onaylama – (In Box)

- Siparişi aldıktan sonra kabul edin.

- Kabul edilen siparişler Work Box'a iletilir.

Siparişi İptal Etme – (Order Box)

- Ortağınız kabul etmeden önce bir siparişi iptal edebilirsiniz.
- İptal edilenler yeniden sipariş edilebilir.

Siparişi Reddetme (In Box)

- Alınan bir siparişi reddedebilirsiniz.
- Reddedilenler yeniden sipariş edilebilir.

Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme

Order Box'dan sipariş ettiğiniz vakanın detaylarını klinik hesabından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca lab hesabında In Box'ndan aldığınız vakayı da kontrol edebilirsiniz.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Sipariş Bilgisi	Siparişe dahil edilebilecek bilgiler şu şekildedir: Sipariş ID/hasta adı/hesap adı/tarama tarihi/sipariş tarihi/teslimat tarihi/son teslimat tarihi/not. Sipariş edilen ürün detaylarını ve teslimat bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Sipariş Listesi	Sipariş listesi, sipariş edilen ürünün ayrıntılarını görüntüler.
Gönderim	Gönderim bilgilerini girin/kontrol edin.

Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)

Tamamlanan vakanın gönderim bilgilerini girin ve gönderime başlayın.

1. "Gönderim" sekmesine tıklayın.
2. Gönderim bilgilerini girin ve "Kaydet"i tıklayın.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. Girilen bilgiler ortağınıza gönderilir.

Teslimat Tarihlerini Yönetme

Sipariş verirken beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz. Bu bilgiler ortağınıza iletilecektir.

Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)

- Case Box'dan sipariş verirken talep ettiğiniz teslimat tarihini girebilirsiniz.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name Patient Name

mandibular movement - Clone - Clone Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date Delivery Time

2023-04-13 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Varsayılan değer, sipariş tarihinden sonraki 7 gündür.
- Ürünleri teslim almak istediğiniz tarihi/saati girin ve siparişe devam edin.
- Kaydırıcıyı kullanarak saati kolayca ayarlayabilirsiniz.

Beklenen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Lab hesabı)

- In Box'dan gelen talep için beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order ID: 10413603

Patient Name: test

Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 07:56

Order Date: 2022-09-29 08:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 10:30

Expected Delivery Date: 2022-10-01 10:30

Memo: -Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Talep edilen teslimat tarihini ortakla kontrol edin ve "Düzenle" düğmesini kullanarak yeniden planlayın.



2. Fiili iş gününü dikkate alarak beklenen teslimat tarihini girin. Gerekirse yorum da bırakabilirsiniz.
3. "Uygula" yı tıklayın.

March 2022

17

Delivery Time: 11:45 AM

Comment

Cancel Apply

4. Beklenen teslimat tarihi ve not, siparişle birlikte iletilecektir.
 - Order Box'daki tarihi ve notları kontrol edebilirsiniz.
 - Beklenen teslimat tarihini değiştirebilirsiniz. Değişiklikler ortağınıza iletilecektir.
5. "Geçmiş" düğmesini kullanarak vaka geçmişini kontrol edebilirsiniz.



Vaka Tamamlama

Tamamlama (Work Box/In Box)


Tüm görevler tamamlandığında, vaka çalışmasını tamamlamak için "Bitti"ye basın.

Vaka detaylarından bir vakayı tamamlama

Üç nokta simgesini "Aç" veya "Yeniden Tara" butonunun sağında bulabilirsiniz.



Simgeye tıklayıp "Done" durumunu seçerek işi tamamlayın.

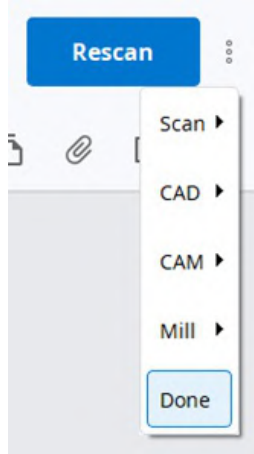

Vaka listesinden birden çok vakayı tamamlama

1. Work Box'a gidin.
2. Tamamlanacak tüm vakaları seçin.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. "Durum"u tıklayın ve "Bitti"yi seçin.

Tamamlama (Case Box/Order Box)

Vaka laboratuvar tarafında tamamlandıktan sonra kliniğin tüm sipariş sürecini tamamlamak için vakayı onaylaması gerekir.

Laboratuvar çalışmasını tamamlarsa klinik, Order Box'da "Teslimatı Onayla" düğmesini bulabilir.


Buna tıklayın, böylece tüm sipariş süreci tamamlanır ve vaka durumu "Case Completed" olarak değiştirilir.

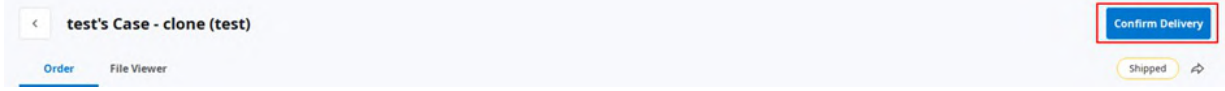

Case Box'da sipariş edilmemiş bir vakayı tamamlama

Laboratuvara sipariş edilmeyen vakalar için bu vakaları Case Box'dan tamamlayabilirsiniz.

1. Case Box'a gidin.
2. Tamamlamak istediğiniz vakayı seçin.

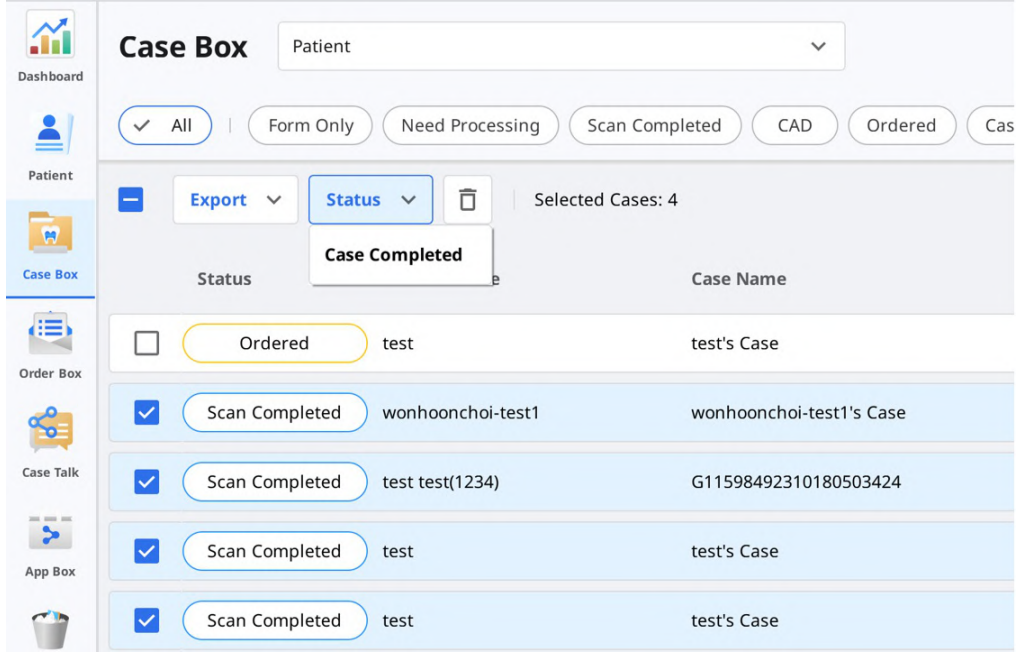

3. "Durum"u tıklayın ve "Case Completed"i seçin.

Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma

Etiketleri kullanarak vakanız için ek bilgiler ekleyebilir ve bunları ortaklarınıza gönderebilirsiniz.

Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme

Etiketleri, yeni bir vaka oluşturduğunuzda veya vaka bilgilerini düzenlerken girebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Daha önce kullandığınız etiketleri kolayca arayabilir ve seçebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme

Sipariş verirken Sipariş iletişim kutusunda etiketleri kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z