

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Εισαγωγή	7
Medit Link	7
Επισκόπηση υπηρεσίας	7
Υπηρεσία Cloud	8
Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών	9

Medit Link > Εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος	10
Απαιτήσεις συστήματος για Windows	10
Απαιτήσεις συστήματος για macOS	10
Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία	10
Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης	10
Ελάχιστο για κινητά	10
Εγκατάσταση σε Windows	11
Εγκατάσταση σε macOS	14

Medit Link > Έναρξη

Εγγραφείτε και συνδεθείτε	18
Ιστοσελίδα Medit Link	18
Εγγραφή	18
Σύνδεση και Αρχική σελίδα	20

Medit Link > Ιστοσελίδα Medit Link

Dashboard	22
Επισκόπηση Dashboard	22
Medit Insights	22
Εγγραφή στο Medit Insights	23
Απεγγραφή από το Medit Insights	24
Patient	25
Αναζήτηση ασθενούς	25
Case Box/Work Box	26
Φιλτράρισμα περιστατικού	26
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	26
Φιλτράρισμα κατά κατάσταση	27
Φιλτράρισμα κατά διάρκεια	28
Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση	28
Λεπτομέρειες περιστατικού	28
Order Box/In Box	30
Λεπτομέρειες παραγγελίας	30
Καρτέλες σε Order Box/In Box	30
Case Talk	31
Δημιουργία Case Talk	31
Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης	32
Λεπτομέρειες Case Talk	34
Web Viewer	34
Σχολιασμός	35
Σχόλια	36

Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο	37
Δέντρο δεδομένων	37
Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων	37
3D έλεγχοι μοντέλου	38
Partners	39
Αναζήτηση συνεργατών	39
Η Λίστα συνεργατών μου	39
Πρόσκληση συνεργάτη	40
Membership	41
Συνδρομή	41
Πρόγραμμα	41
Αποθήκευση Cloud	42
Εγγραφή	43
Απεγγραφή	45
Πληροφορίες χρέωσης	46
Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής	46
Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής	47
Εξαργύρωση	48
Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης	49
Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης	49
My Info	51
Ο λογαριασμός μου	51
Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)	51
Ο σαρωτής μου	52
Άνοιγμα του μενού	53
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	53
Σχετικές ιστοσελίδες	53
Λήψη εφαρμογής Medit Link	54

Medit Link > Εφαρμογή Medit Link

Επισκόπηση	55
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.	55
Γραμμή τίτλου	56
Οι Πληροφορίες μου	56
Ειδοποιήσεις	56
Ειδοποίηση και ενημέρωση	57
Ρυθμίσεις	57
Κατάσταση δικτύου	58
Ρυθμίσεις	60
Γενικά	60
Διαχείριση αποθήκευσης	61
Ορισμός περιόδου	62
Τοπικός αποθηκευτικός χώρος	62
Αποθήκευση Cloud	62
Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος	63
Επιλογές εξαγωγής	63
Εργαλείο μετατροπής περιστατικών	65
Εξαγωγή περιστατικού	66
Εισαγωγή περιστατικού	67
Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης	68
Σχετικά	69
Οδηγός χρήστη	69

Μενού	70
Dashboard	70
Patient	70
Προσθήκη νέου ασθενή	71
Διαγραφή ασθενή	71
Συγχώνευση ασθενών	71
Case Box/Work Box	72
Καρτέλες σε Case Box/Work Box	73
Λειτουργίες σε Case Box/Work Box	73
Order Box/In Box	74
Καρτέλες σε Order Box/In Box	75
Case Talk	75
App Box	76
Όλα	76
Medit Apps	77
Ληφθέντα	77
Trash Box	77
Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών	78
Μεταφόρτωση	78
Λήψη	78
Σχετικές ιστοσελίδες	79
Πρόγραμμα προβολής αρχείων	80
Δέντρο δεδομένων	80
Εργαλεία ελέγχου μοντέλου	80
3D έλεγχος μοντέλου	81
Έλεγχος 2D εικόνας	81
Εργαλεία λειτουργιών	82
Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις	82
Ορθοδοντική προβολή	82
Γέμισμα κενών	83
Περικοπή	84
Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης	86
Κίνηση της κάτω γνάθου	88
Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων	89
Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα	89
Επιλογές προβολής	91
Φίλτρα κατάστασης	91
Τύπος προβολής	92
Ομαδοποίηση	92
Ταξινόμηση	92
Φιλτράρισμα και αναζήτηση	94
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	94
Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία	95
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης	95
 Medit Link > Ροή εργασιών	
Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού	97
Δημιουργία περιστατικών	97
Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	97
Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	98
Επεξεργασία περιστατικών	99
Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	99
Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	99

Κλωνοποίηση περιστατικών	100
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	100
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	100
Διαγραφή περιστατικού	101
Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)	101
Πληροφορίες φόρμας	102
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box	102
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	102
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box	102
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	102
Σύνδεση δοντιών με γέφυρα	102
Ρύθμιση επιλογών σάρωσης	103
Medit Scan for Labs	103
Γενικές επιλογές	103
Επιλογές κατά δόντια	103
Προσθήκη στα αγαπημένα	103
Προσθήκη στα αγαπημένα	104
Διαχείριση αγαπημένων προτύπων	104
Εργασία σε Σάρωση/CAD	105
Διαδικασία σάρωσης	105
Διαδικασία CAD	105
Χρησιμοποιήστε πρόσθετες εφαρμογές	105
Πρόσθετο Γρήγορη εκκίνηση	105
Διαχείριση εφαρμογής εκκίνησης	105
Γρήγορη εκκίνηση	106
Όλες οι εφαρμογές	106
Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων	107
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης	107
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών	108
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων	110
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων	112
Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV	114
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου	114
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα	115
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο	115
Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link	116
Case Box/Work Box	116
Web Viewer	117
Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών	119
Παραγγελία περιστατικών	119
Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)	120
Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)	120
Απορριπτές παραγγελίες (In Box)	120
Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών	120
Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)	121
Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης	121
Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)	121
Ορισμός αναμενόμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός εργαστηρίου)	122
Ολοκλήρωση περιστατικού	123
Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)	123
Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών	123
Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών	123
Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)	124

Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box	124
Επικοινωνία με χρήση ετικετών	126
Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού	126
Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία	127
Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού	127

Εισαγωγή

Medit Link

Το Medit Link είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ κλινικών και εργαστηρίων για να παρέχει μια βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για κάθε μέρος.

Προσφέρει διαφοροποιημένες λειτουργίες με βάση τον τύπο και τα δικαιώματα κάθε λογαριασμού. Το πρόγραμμα παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση της ροής εργασιών, από σάρωση με στοματικούς σαρωτές και σαρωτές μοντέλων, παραγγελία περιστατικών και σχεδιασμό και παραγωγή αποκαταστάσεων.

Το Medit Link αποτελείται από μια διαδικτυακή υπηρεσία και μια εφαρμογή για υπολογιστή.

Επισκόπηση υπηρεσίας

		Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
		• Εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού • Αναζήτηση και διαχείριση συνεργατών • Κοινοποίηση περιστατικών μέσω του Web Viewer με έναν σύνδεσμο με δυνατότητα κοινοποίησης • Πρόσβαση σε περιστατικά από την εφαρμογή • Διαχείριση παραγγελιών	• Εισάγετε πληροφορίες φόρμας • Σάρωση • Διαχείριση παραγγελιών • Σύνδεση με CAD • Διαχείριση ασθενών
Κλινική	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε τους συνεργάτες και τις κλινικές σας και κάντε κοινοποίηση των περιστατικών. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, κάντε παραγγελίες και διαχειριστείτε ασθενείς. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Εργαστήριο	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε συνεργάτες και το εργαστήριό σας και κοινοποιήστε περιστατικά. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Εισάγετε πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, και διαχείριση παραγγελιών. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Υπηρεσία Cloud

Το Medit Link υποστηρίζει την αυτόματη μεταφόρτωση/λήψη βάσεων δεδομένων και αρχείων μέσω του AWS (Amazon Web Services).

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud συγχρονίζονται αυτόματα με τους υπολογιστές πολλών χρηστών στην εταιρεία, ώστε να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα από οποιονδήποτε υπολογιστή ανά πάσα στιγμή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η ανάκτηση βάσει cloud διατηρούν όλα τα δεδομένα σας ασφαλή. Διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή ακόμα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης του υπολογιστή.

Η υπηρεσία cloud επιτρέπει στους συνεργαζόμενους οδοντιάτρους και τα εργαστήρια να κοινοποιούν γρήγορα δεδομένα χωρίς να υπάρχει η ταλαιπωρία της αποστολής με email ή της χειροκίνητης μεταφοράς των σαρώσεων. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασθενούς, κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται και μεταδίδονται με ασφάλεια. Η Medit συμμορφώνεται με ιατρικούς νόμους και κανονισμούς όπως το HIPAA και το GDPR.

Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών

Το Medit Link προσφέρει το δικό του σύστημα παραγγελιών.

- Το Medit Link επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντιατρικών εργαστηρίων και την κοινοποίηση δεδομένων γρήγορα και εύκολα.
- Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την κατάσταση της παραγγελίας.

Απαιτήσεις συστήματος

Σημείωση

Ανατρέξτε στις απαιτήσεις συστήματος για το Medit Scan for Clinics και το Medit Scan for Labs, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σάρωσης με τον σαρωτή σας.

Απαιτήσεις συστήματος για Windows

	Φορητός υπολογιστής & Επιτραπέζιος υπολογιστής
Επεξεργαστής	Intel Core i5 2.6 GHz ή νεότερο
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Κάρτα γραφικών	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) ή νεότερο / ή ισοδύναμη κάρτα γραφικών AMD
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 64 Bit (μη διαθέσιμο σε 32 Bit) ή νεότερη έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος για macOS

	Mac
Επεξεργαστής	M1 με 8πύρην, 7πύρην GPU, 16πύρην Neural Engine
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Λειτουργικό σύστημα	Monterey 12 ή νεότερο

Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία

Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης

	Προγράμματα περιήγησης
Υπολογιστής	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Ελάχιστο για κινητά

	Android	iOS
Συσκευή	Galaxy S7 ισοδύναμο ή νεότερο	iPhone 7 ισοδύναμο ή νεότερο
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Μνήμη RAM	3 GB ή περισσότερα	2 GB ή περισσότερα
AP	Νεότερο από Snapdragon 710	A10 Fusion

Εγκατάσταση σε Windows

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με προγράμματα απόκτησης σαρώσεων - Medit Scan for Clinics και Medit Scan for Labs.


1. Εκτελέστε το Medit_LinkSetup.exe.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε το φάκελο για την εγκατάσταση του Medit Link. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας και κάντε κλικ στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

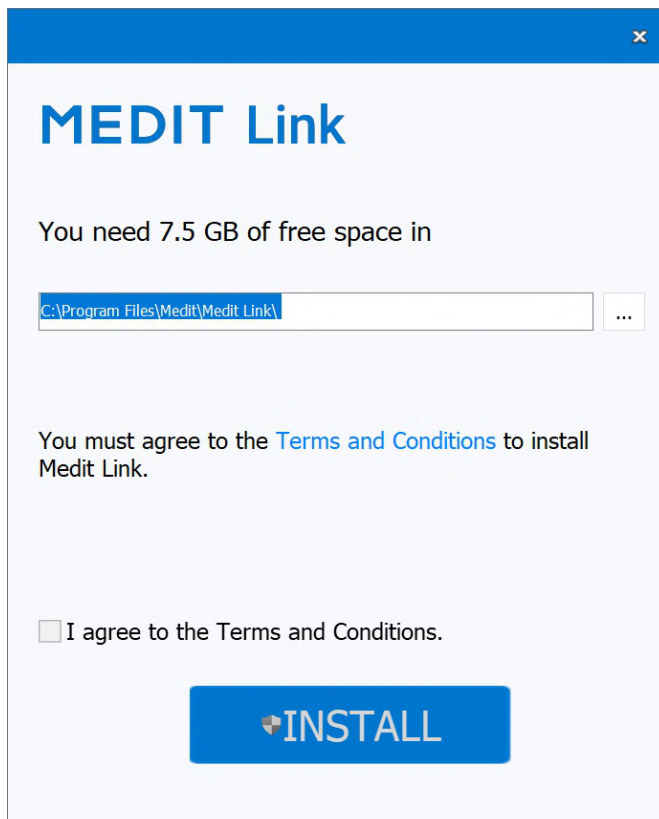

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σαρωτή είναι αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Η εγκατάσταση ενδέχεται να μην προχωρήσει εάν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας.
5. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν δεν έχετε τον σαρωτή.

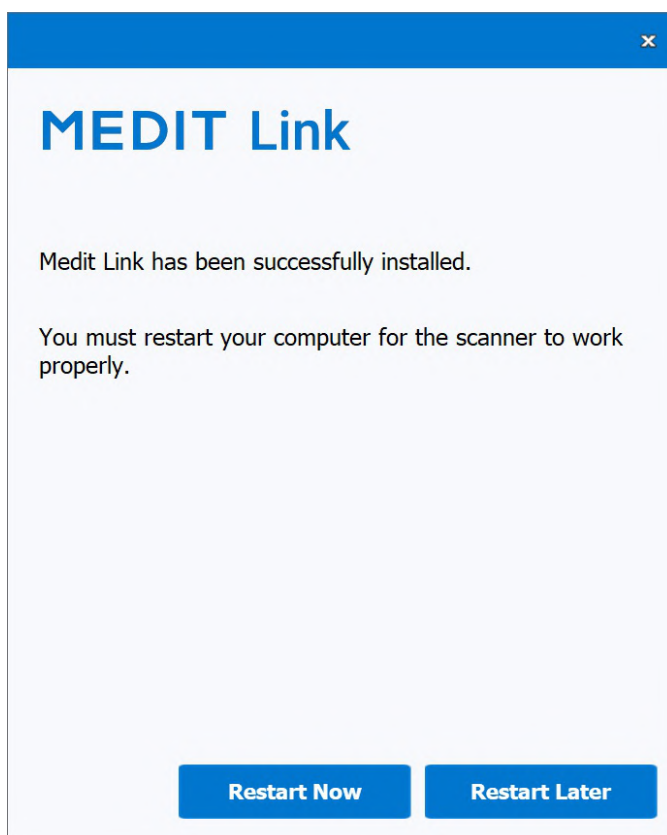


Σημείωση

Εάν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο σαρωτής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.


Εγκατάσταση σε macOS

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με το Medit Scan for Clinics.


1. Εκτελέστε το Medit_Link_x.x.x.pkg και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

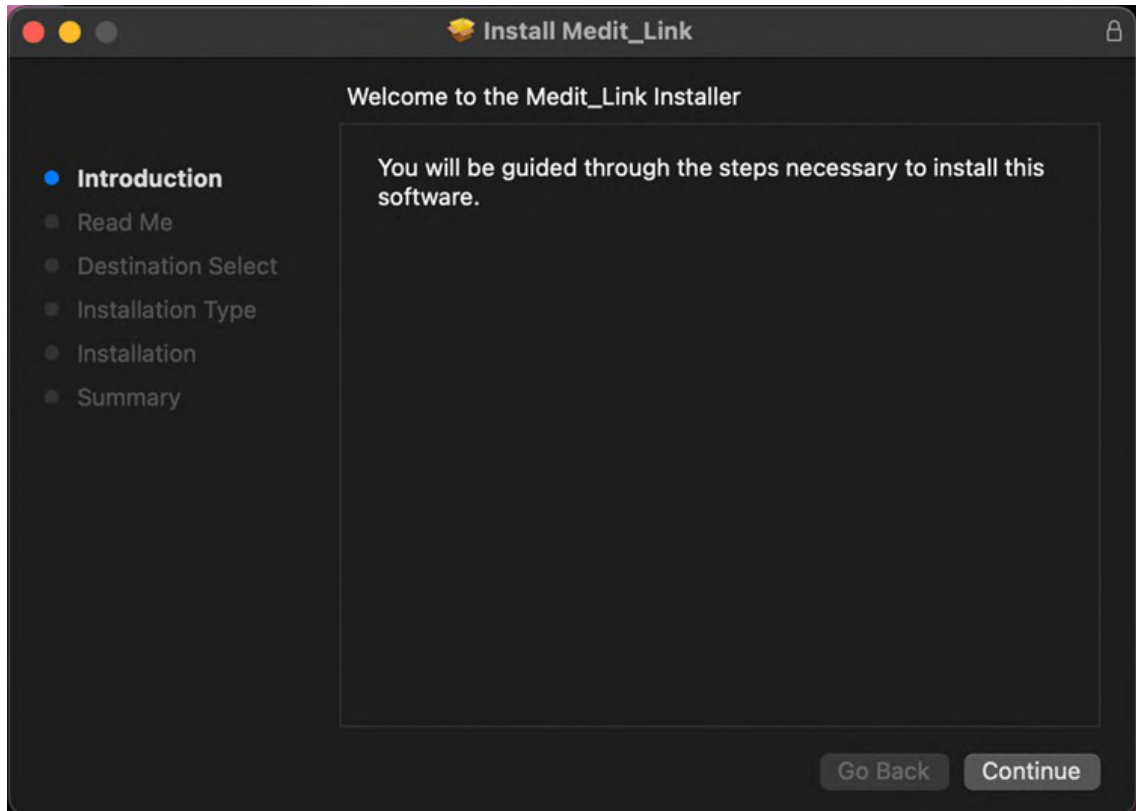


2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

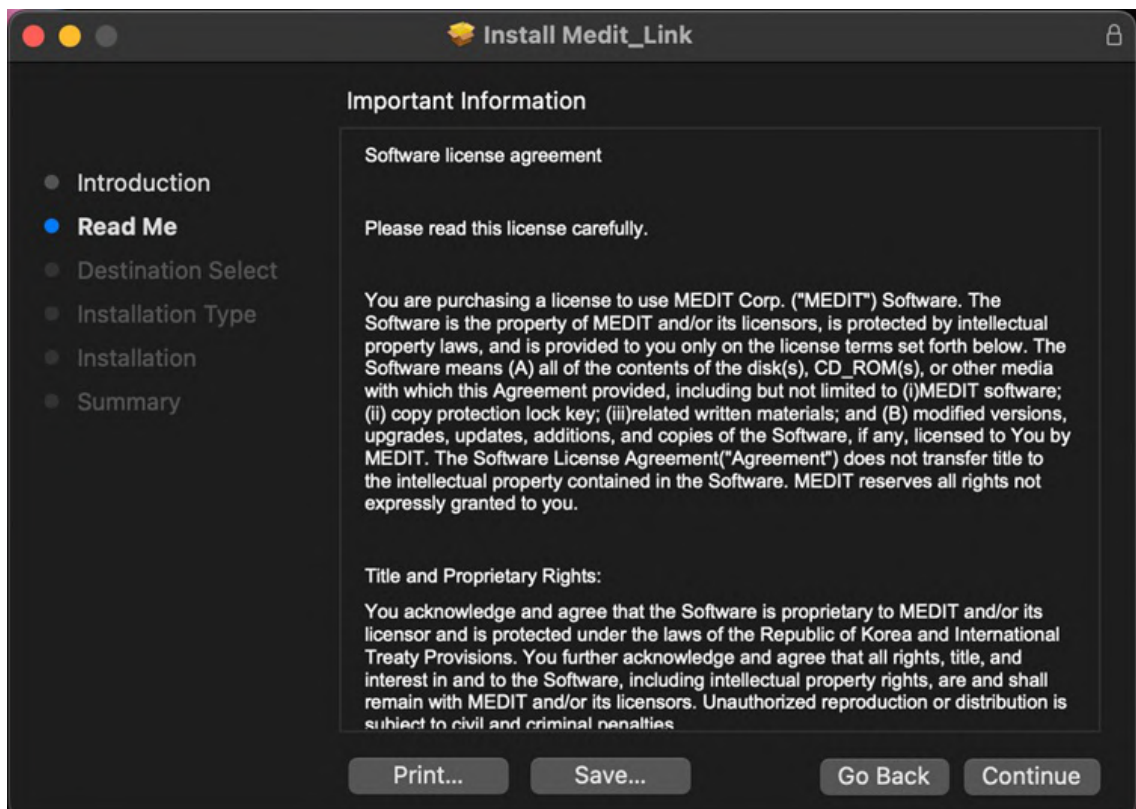

3. Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

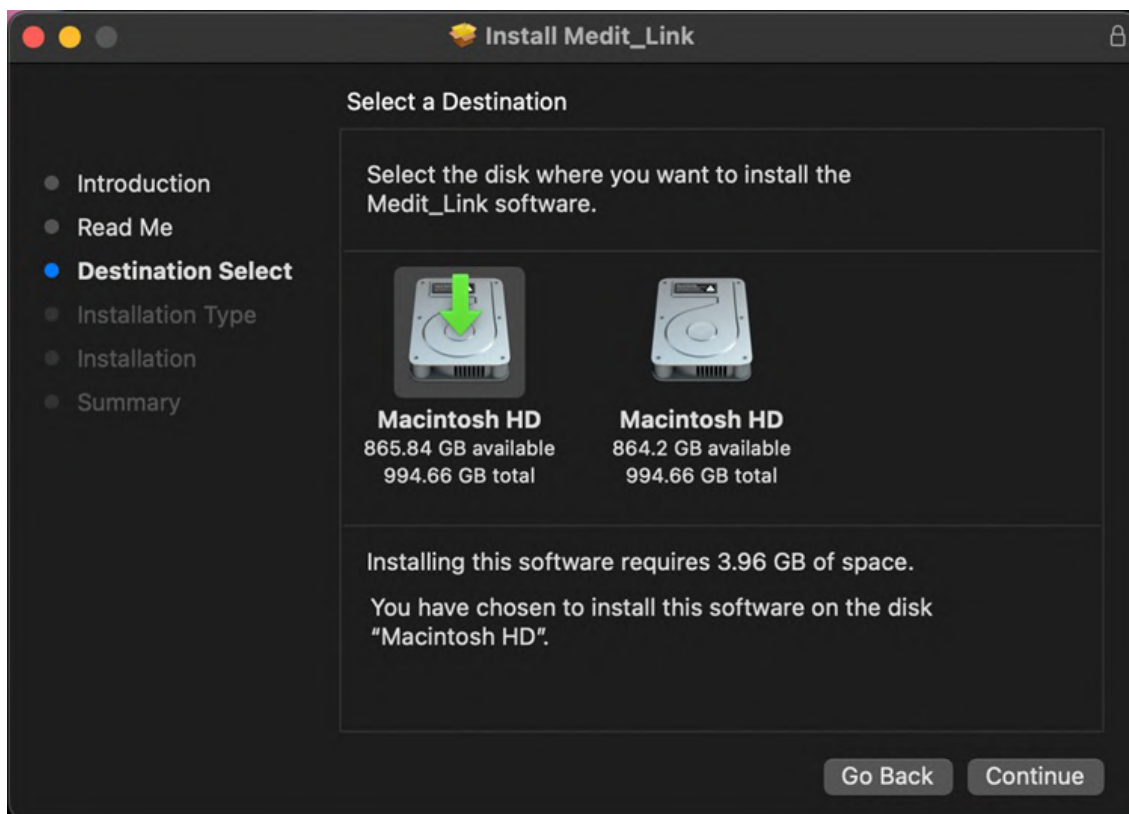


4. Κάντε κλικ στην «Αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης...» για να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης.

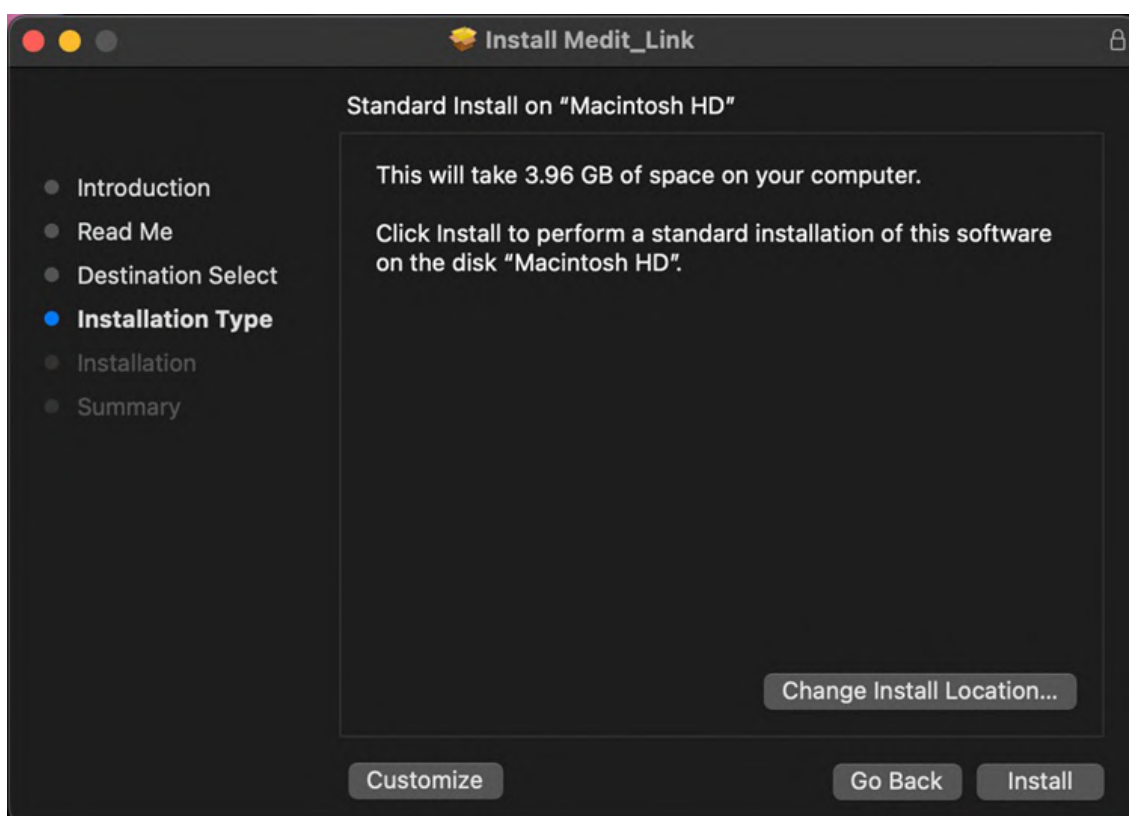


5. Κάντε κλικ στην «Εγκατάσταση» και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Mac για να επιτρέψετε την εγκατάσταση, εάν σας ζητηθεί.



6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

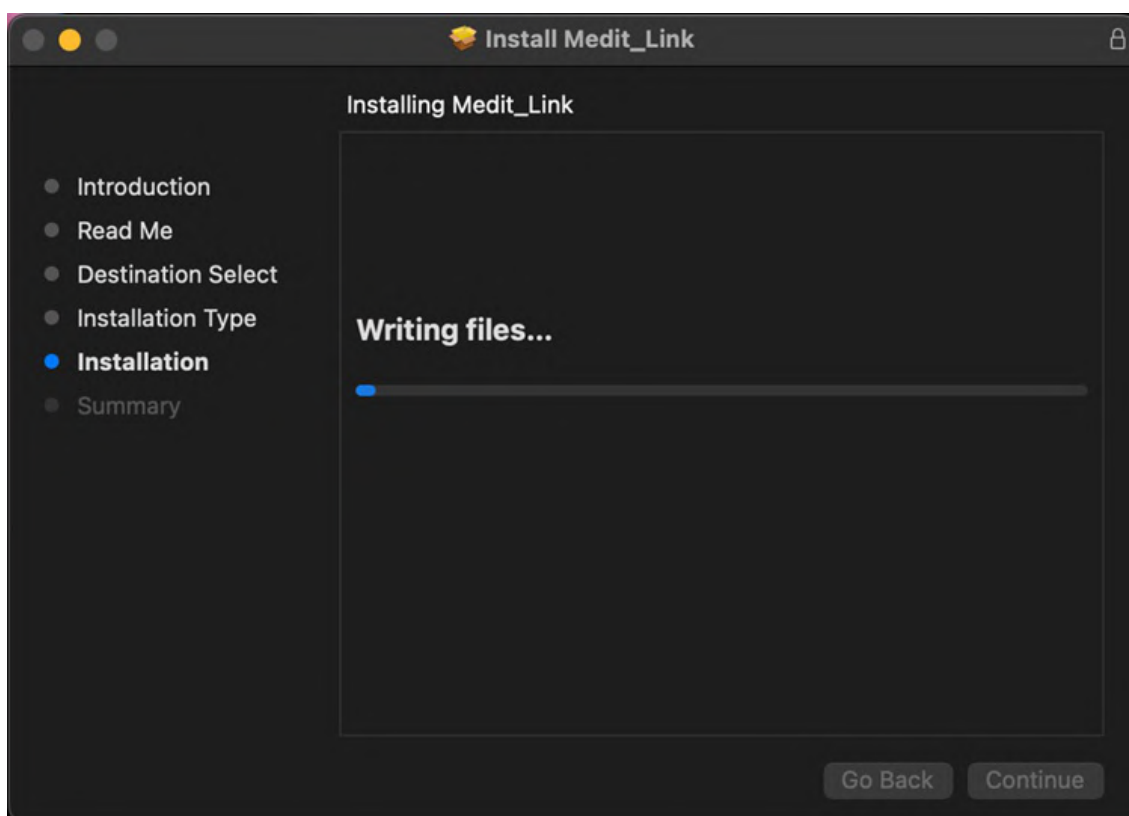


7. Κάντε κλικ στο «Κλείσιμο» για έξοδο από το παράθυρο εγκατάστασης.

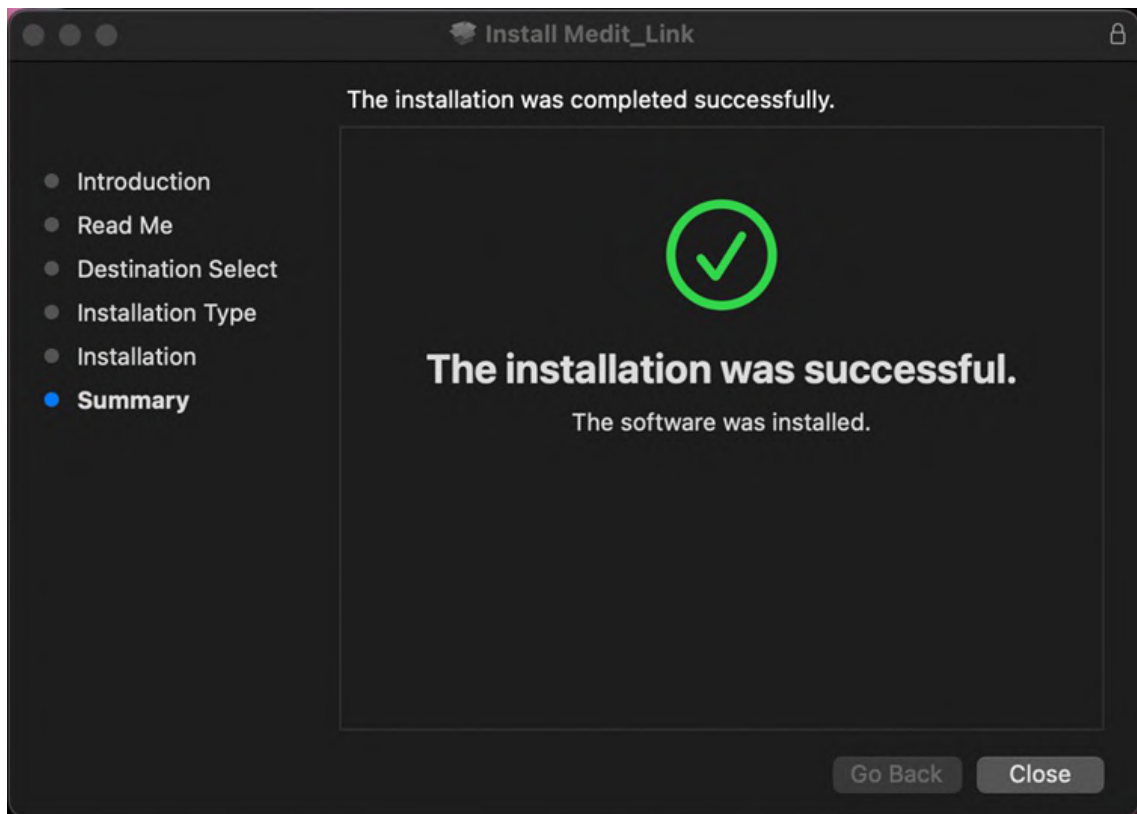

Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ιστοσελίδα Medit Link

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Medit Link στη διεύθυνση www.meditlink.com.

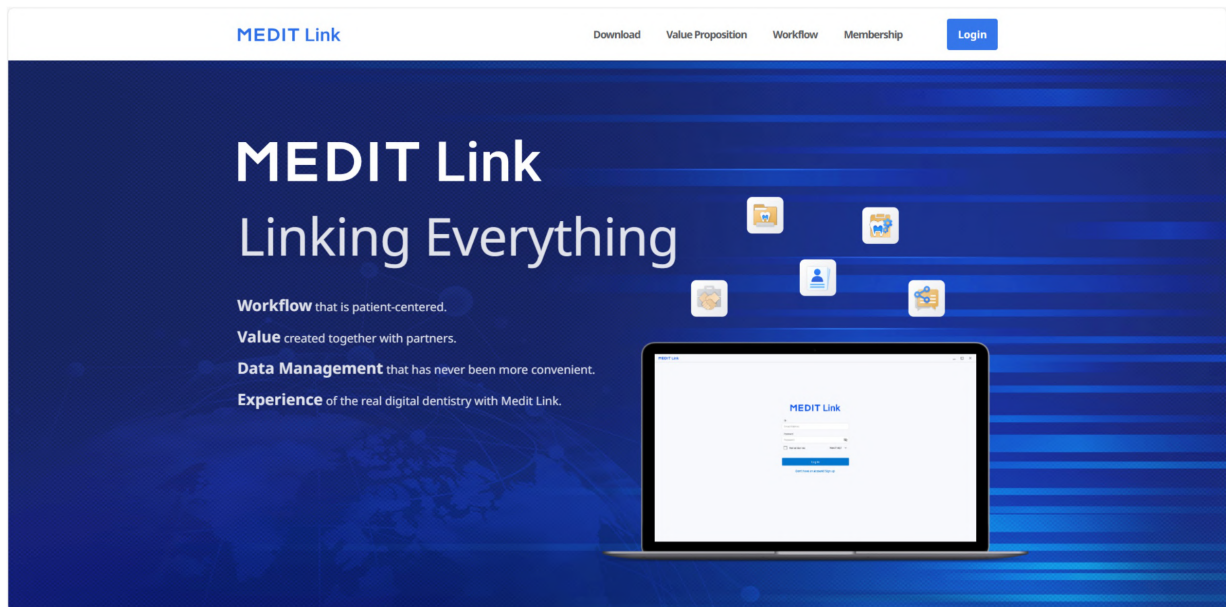

Σημείωση

Εγγραφείτε στο Medit Link China στη διεύθυνση www.meditlink.cn.

Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Medit Link, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που παρέχονται στο Medit Link αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ως κλινική ή εργαστήριο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους τέσσερις τύπους λογαριασμού για καταχώριση συνδρομής και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με πλήρεις ή περιορισμένες δυνατότητες και προνόμια, ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού.

- Κλινική - Διαχειριστής
- Κλινική - Μέλος
- Εργαστήριο - Διαχειριστής
- Εργαστήριο - Μέλος

Ο διαχειριστής είναι συνήθως εκπρόσωπος της εταιρείας σας και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Medit Link. Αντίθετα, ο λογαριασμός μέλους έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Για να εγγραφείτε σε συνδρομή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό; Κάντε εγγραφή». από τη σελίδα σύνδεσης.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) 

2. Αφού διαβάσετε τις παρεχόμενες περιγραφές, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» στον επιθυμητό τύπο λογαριασμού.

Create Your Medit Link Account



Clinic

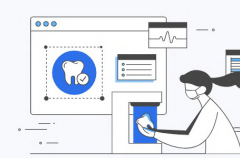

Lab

Administrator Dentist, Manager Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link. ✓ Scan/Order/Manage orders ✓ Manage members Register	Administrator Laboratory Director, Manager Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link. ✓ Scan/Manage ordered cases ✓ Manage members Register
Member Dental Hygienist, Dental Staff Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval. ✓ Scan/Order/Manage orders Register	Member Dental Technician, Laboratory Staff Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval. ✓ Scan/Manage ordered cases Register

3. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Εισάγετε το όνομα κλινικής ή εργαστηρίου και, ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο λογαριασμού, κάντε τα εξής:
 - ο Εάν κάνετε εγγραφή ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο «Έλεγχος διαθεσιμότητας» για να δείτε εάν το όνομα που καταχωρίσατε είναι διαθέσιμο.
 - ο Εάν κάνετε εγγραφή ως μέλος, κάντε κλικ στην «Αναζήτηση.» Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή της εταιρείας σας προτού εγγραφείτε.
5. Συμπληρώστε την υπόλοιπη φόρμα εγγραφής και κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

Σημείωση

Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ κατά την εγγραφή, θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία της Medit.

6. Θα σας σταλεί ένα email επαλήθευσης.
7. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που λάβατε.

Σύνδεση και Αρχική σελίδα

1. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας στη σελίδα σύνδεσης και κάντε κλικ στην «Σύνδεση».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί εάν δεν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

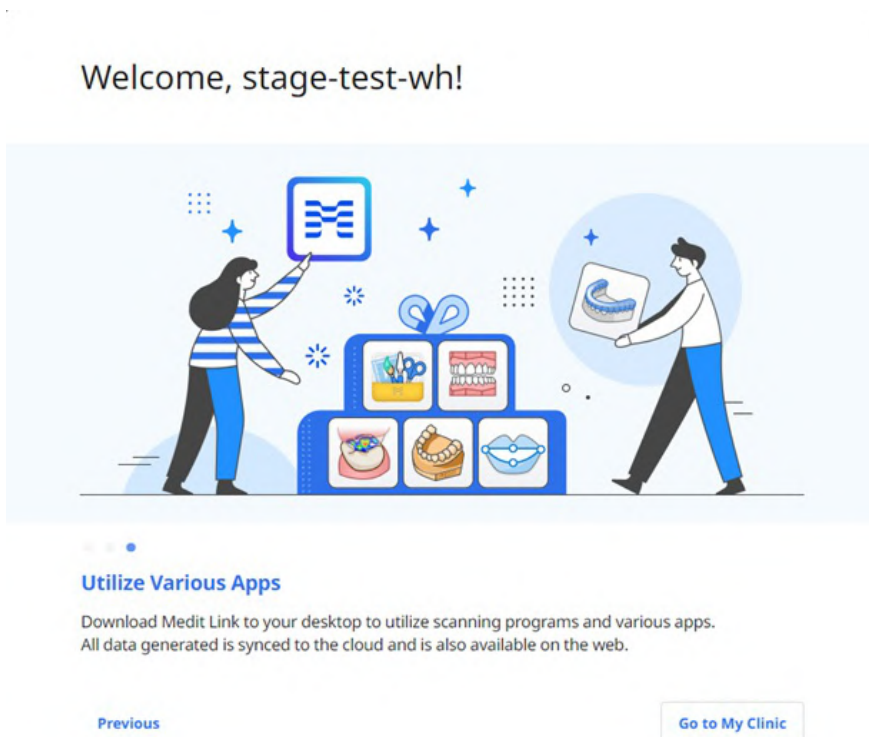

Σημείωση


Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Medit Link, τα στοιχεία της κλινικής ή του εργαστηρίου σας θα πρέπει να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση στην κλινική μου» ή «Μετάβαση στο εργαστήριο μου» και εισάγετε τις πληροφορίες της κλινικής ή του εργαστηρίου, όπως το όνομα της επιχείρησης, οι εικόνες εξωφύλλου/λογότυπου, οι υπηρεσίες που προσφέρετε, η διεύθυνση γραφείου, ο αριθμός γραφείου κ.λπ.
4. Οι πληροφορίες που εισάγονται στην αρχική σελίδα μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή στο My Info > καρτέλα Η κλινική μου ή Το εργαστήριο μου στην Ιστοσελίδα Medit Link.

Dashboard

Επισκόπηση Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα - τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

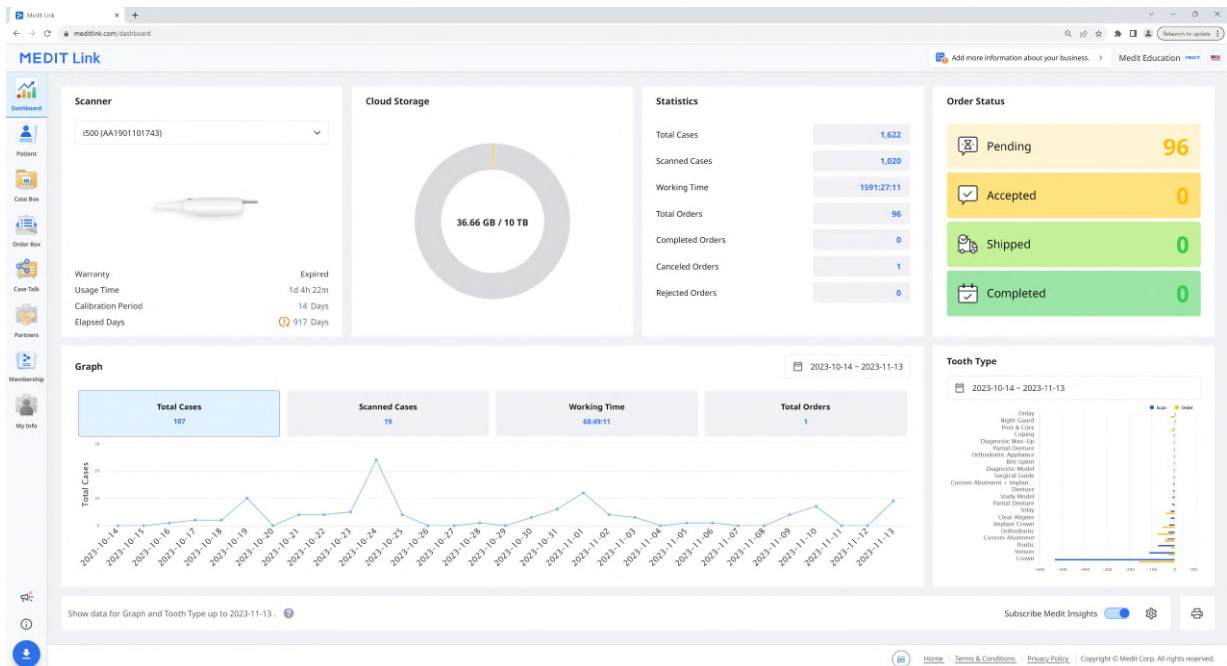

Τα γραφήματα και τα διαγράμματα στον πίνακα εργαλείων εμφανίζουν στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link.

Σαρωτής	Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς σαρωτές, συμπεριλαμβανομένου, της εγγύησης, του χρόνου χρήσης του σαρωτή, του διαστήματος βαθμονόμησης και του χρόνου που έχει περάσει από την βαθμονόμηση.
Αποθήκευση Cloud	Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας του cloud και της ποσότητας που χρησιμοποιείται.
Στατιστικά	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση εργασίας.
Κατάσταση παραγγελίας	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση παραγγελίας.
Γράφημα	Γράφημα πληροφοριών εργασίας ανά περίοδο.
Τύπος δοντιού	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των σαρώσεων και τις παραγγελίες ανά πληροφορίες θεραπειάς.


Medit Insights

Το Medit Insights είναι μια υπηρεσία αναφοράς που σας βοηθά να αναλύσετε τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης σας.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Medit Insights

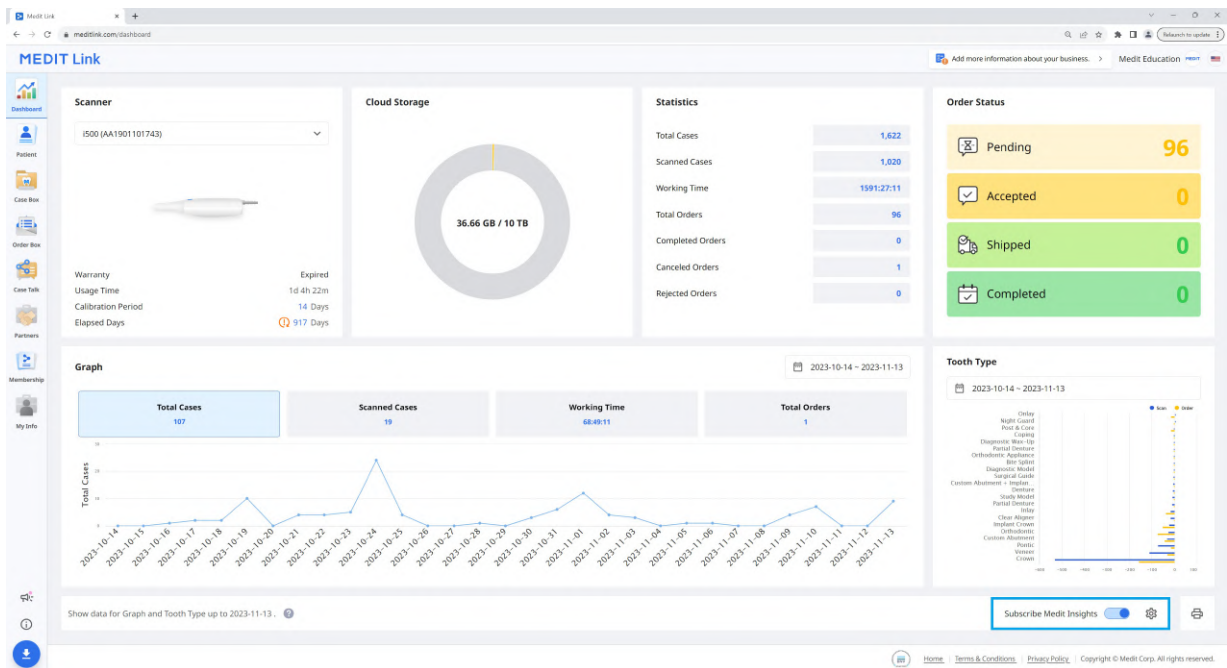

Εγγραφή στο Medit Insights

Μπορείτε να λάβετε ένα email αναφοράς τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαδικασία εγγραφής. Απλώς ενεργοποιήστε την «Εγγραφή σε Medit Insights».

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για τον λογαριασμό του Medit Link, μπορείτε να ορίσετε μια άλλη διεύθυνση email για να λαμβάνετε τα Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account

☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

CancelOK

Τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα, θα λαμβάνετε ένα email με στατιστικά στοιχεία όπως εμφανίζεται παρακάτω.

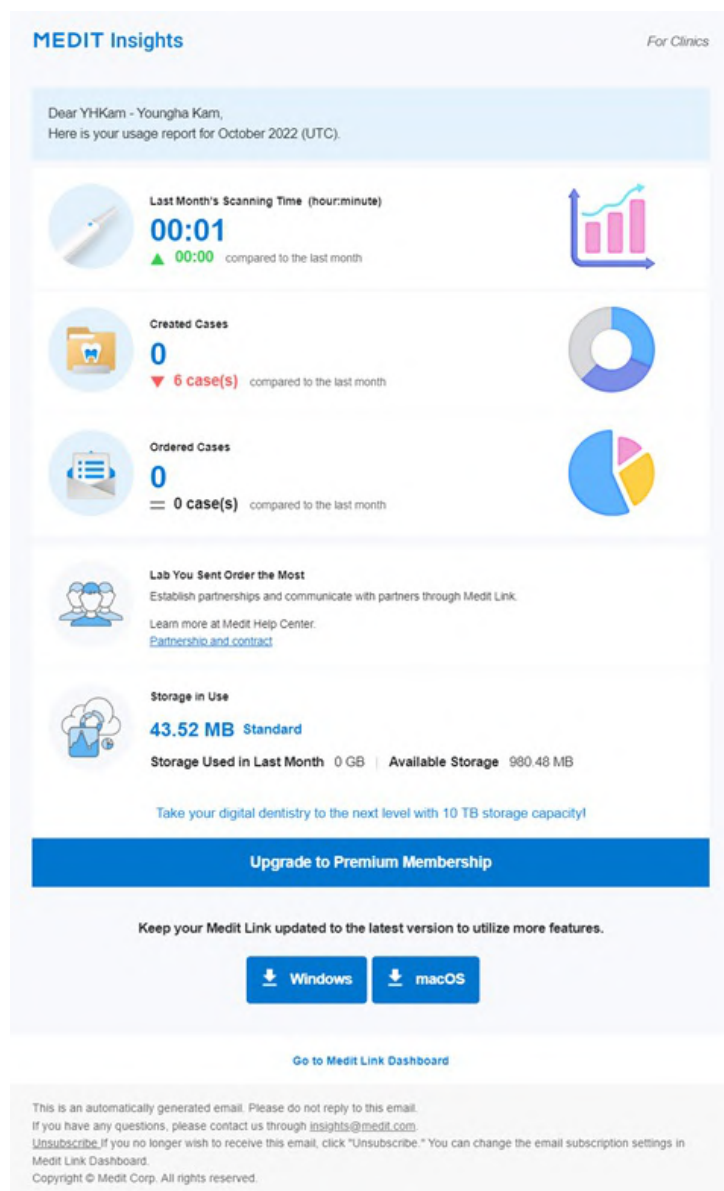

Banner	Το Medit παρέχει χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες εδώ. * Εάν δεν θέλετε να δείτε το banner, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμφωνία Μάρκετινγκ και Προώθησης από το Οι πληροφορίες μου>Ο λογαριασμός μου.
Στατιστικές πληροφορίες	Εμφανίζονται οι πληροφορίες στατιστικών, όπως ο χρόνος σάρωσης, η δημιουργία περιστατικών, οι πιο πολλές παραγγελίες εργαστηρίου κ.λπ.
Λήψη Medit Link	Το κουμπί παρέχει τον σύνδεσμο για λήψη του Medit Link.
Dashboard	Όλες οι στατιστικές πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες του Dashboard σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Dashboard.


Απεγγραφή από το Medit Insights

Απενεργοποιήστε την «Εγγραφή στο Medit Insights» στο Dashboard ή κάντε κλικ στην «Απεγγραφή» στο email που λάβατε.

Patient

Μπορείτε να διαχειριστείτε περιστατικά με βάση το όνομα και το ID του ασθενούς.


Όλοι οι ασθενείς που έχουν εγγραφεί μέσω της εφαρμογής του Medit Link εμφανίζονται σε λίστα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των ασθενών και των περιστατικών τους.

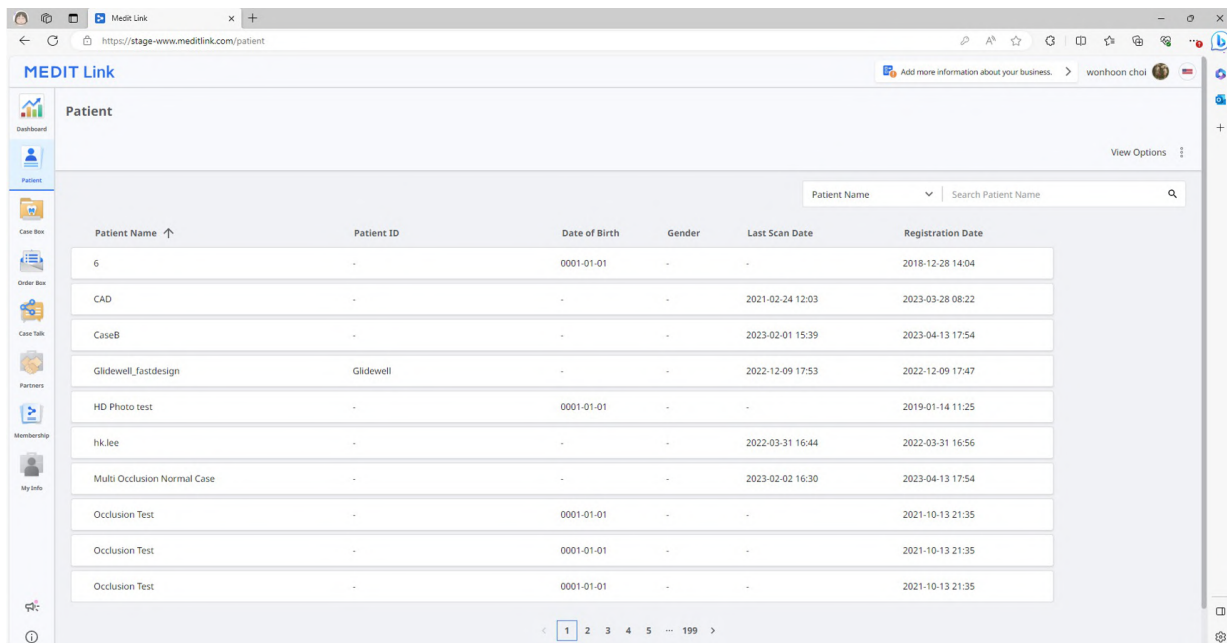

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Αναζήτηση ασθενούς

1. Επιλέξτε τα κριτήρια αναζήτησής σας μεταξύ Όνομα ασθενούς ή ID ασθενούς από το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας ασθενών.

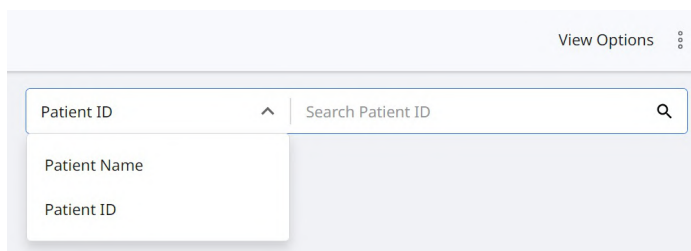

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Εισάγετε το όνομα ασθενούς ή το ID ασθενούς για αναζήτηση σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης.
3. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο ασθενείς με το όνομα ή το ID ασθενούς που έχει εισαχθεί.

Case Box/Work Box

Το Case Box (Κλινική) ή το Work Box (Lab) εμφανίζει όλα τα περιστατικά που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στην εφαρμογή του Medit Link. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος.

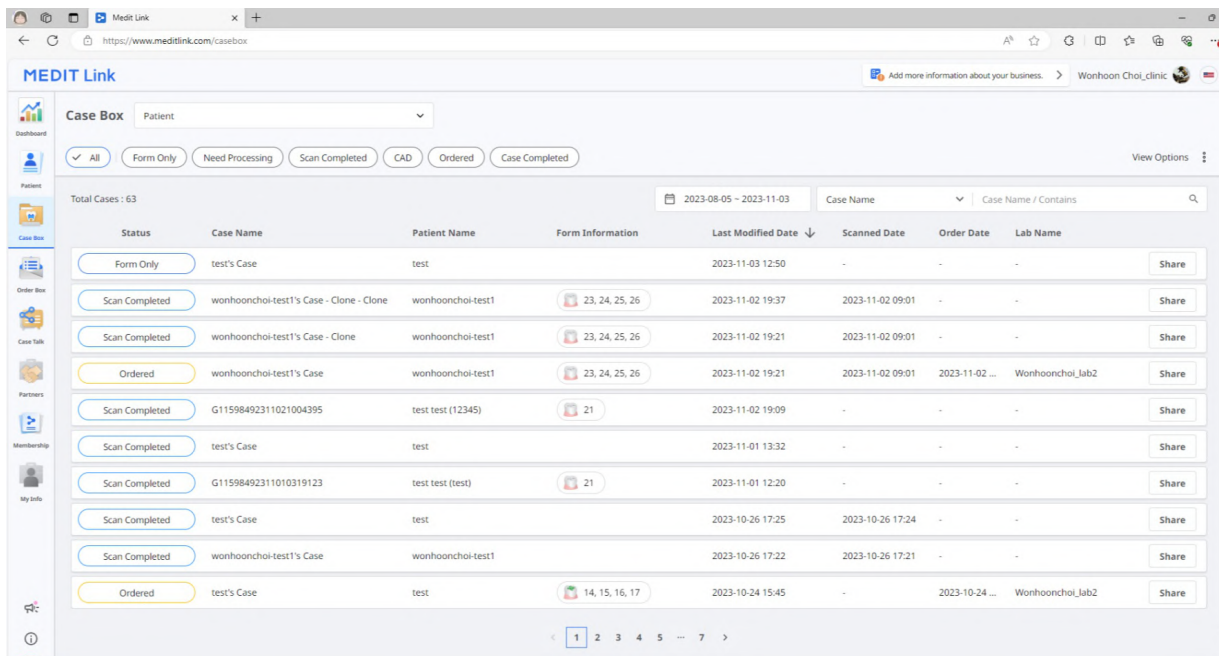


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a dropdown menu set to 'Patient'. Below this are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'Total Cases: 63' indicator is present. A date range filter is set to '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar is labeled 'Case Name / Contains'. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button. The table shows various cases with statuses like 'Form Only', 'Scan Completed', and 'Ordered'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Φιλτράρισμα περιστατικού


Φιλτράρισμα κατά ασθενή

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά κατά ασθενείς. Είναι χρήσιμο όταν βρίσκετε περιστατικά για συγκεκριμένους ασθενείς.

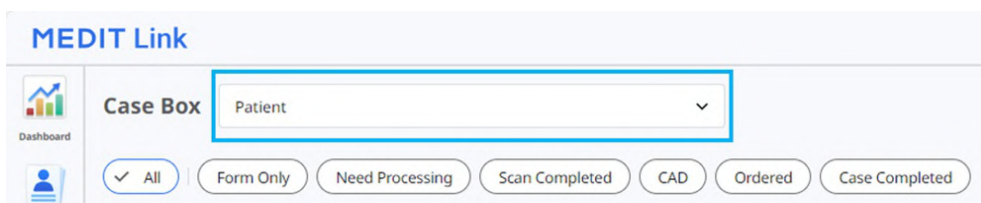

The screenshot shows the Medit Link Case Box search filter interface. The 'Case Box' dropdown is set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενούς στο πεδίο αναζήτησης.

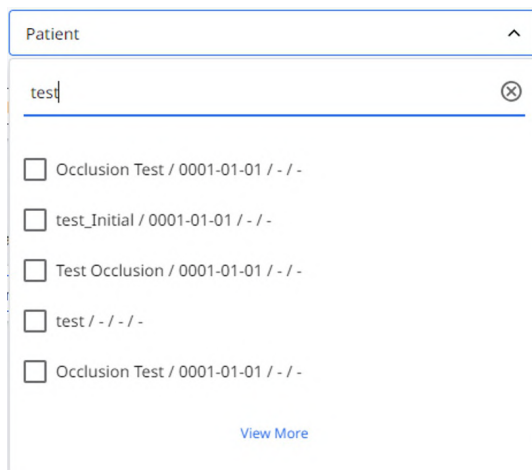

The screenshot shows the patient search dropdown menu. The search input field contains 'test'. Below the input field is a list of search results, each with a checkbox and a label: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom.

2. Επιλέξτε έναν ασθενή από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

3. Μόνο περιστατικά για επιλεγμένους ασθενείς εμφανίζονται στη λίστα, διευκολύνοντας την εύρεση των περιστατικών στα οποία θέλετε να εργαστείτε.

Φιλτράρισμα κατά κατάσταση

All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- Οι ακόλουθοι τύποι κατάστασης παρέχονται βάσει του τύπου λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Εργαστήριο)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Φιλτράρισμα κατά διάρκεια

Μπορείτε να φιλτράρετε και να προβάλλετε περιστατικά που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά την καθορισμένη περίοδο.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.

2. Επιλέξτε το εύρος.

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν εντός αυτής της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τη χθεσινή ημερομηνία.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 90 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 90 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών αυτού του μήνα.
- Προηγούμενος μήνας: Εμφάνιση περιστατικών του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.


Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αναζήτησης για να αναζητήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα.

Οι ακόλουθες επιλογές αναζήτησης παρέχονται με βάση τον τύπο λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου
Work Box (Εργαστήριο)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID παραγγελίας

Λεπτομέρειες περιστατικού

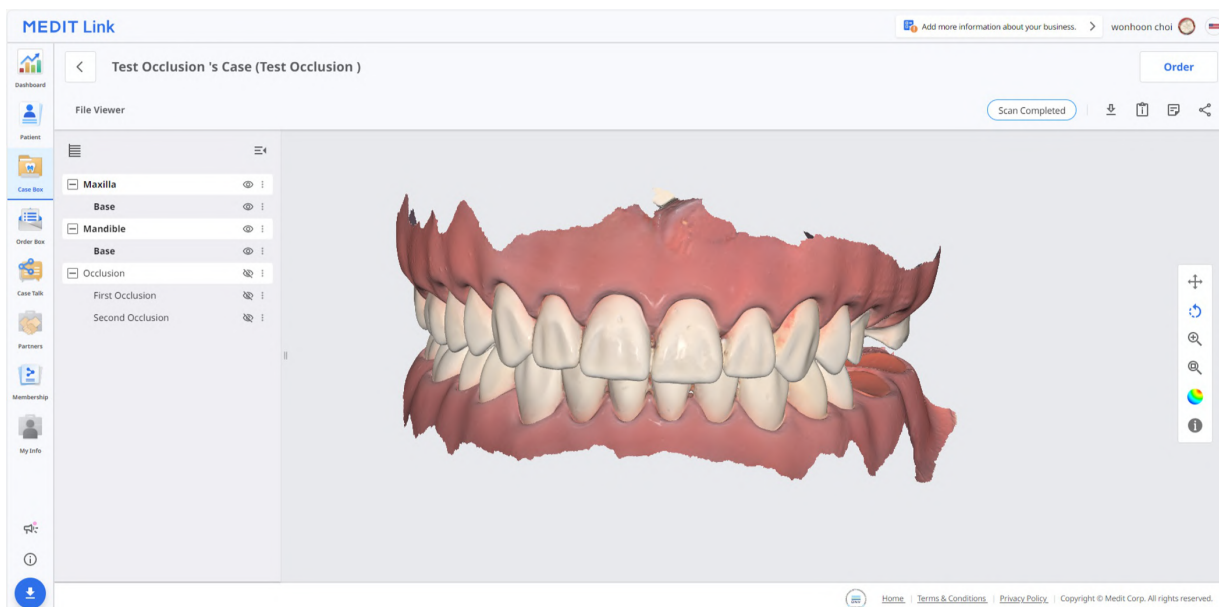

Τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης περιστατικών παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφάνιση της κατάστασης του περιστατικού.
	Μετάβαση στο Order Box/In Box	Παρέχετε μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Λήψη	Κάντε λήψη των αρχείων στο περιστατικό στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις και Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινή χρήση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα.

Order Box/In Box

Το Order Box (Κλινική) ή In Box (Εργαστήριο) εμφανίζει παραγγελθείσα περιστατικά στην εφαρμογή του Medit Link.

Λεπτομέρειες παραγγελίας

The screenshot displays the 'Order Box' interface in the Medit Link application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the 'MEDIT Link' logo and a navigation bar with 'Order' and 'File Viewer' tabs.
- Left Sidebar:** Contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.
- Main Content Area:**
 - Order ID:** 5996137
 - Patient Name:** Occlusion Test
 - Partner Name:** WonhoonChoi_Lab_Stage
 - Scanned Date:** 2023-04-27
 - Order Date:** 2023-04-20 PM 02:08
 - Requested Delivery Date:** 2023-04-27
 - Expected Delivery Date:** 2023-04-27
 - Time:** AM 08:15
 - Memo:** A text area for additional notes.
 - Tags:** A text area for tags.
- Order List:** A table showing the details of the order items.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- 1 Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
- 2 Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/παραλαβή).
- 3 Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων
- 4 Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
- 5 Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
- 6 Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.


Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες για την παραγγελία, όπως αναγνωριστικό παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημείωμα και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα που καθορίζετε, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του «Case Talk» στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

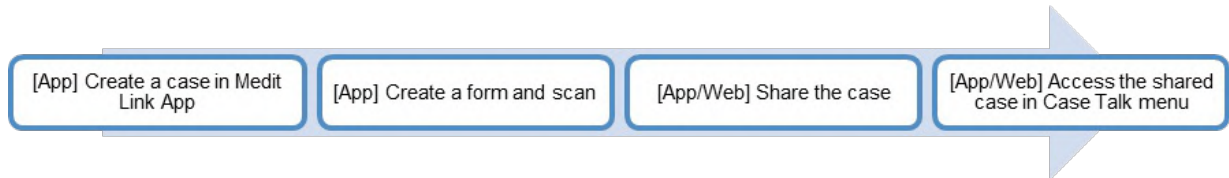

Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.


Δημιουργία Case Talk

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε στο Case Box/Work Box.

1. Βρείτε ένα περιστατικό που θέλετε να κοινοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» στα δεξιά.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε.

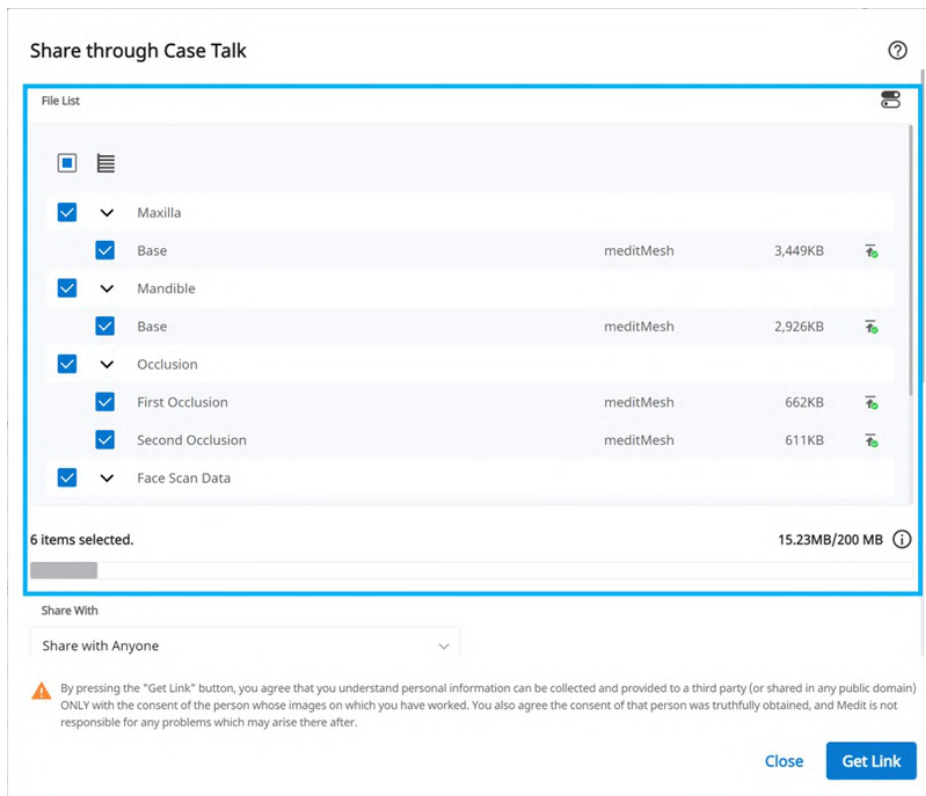


3. Ορίστε τον τύπο της άδειας για κοινοποίηση και τις επιλογές κοινοποίησης.
4. Κάντε κλικ στη «Λήψη συνδέσμου» για να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο.

Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης

Κοινοποίηση με	• Κοινοποίηση με οποιονδήποτε Δημιουργεί έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα αρχεία με οποιονδήποτε. • Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα Δημιουργεί και στέλνει έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο σε συγκεκριμένα άτομα.
Κοινοποίηση μέσω	Εάν επιλέξετε «Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα», μπορείτε να κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο με συγκεκριμένα άτομα με διάφορους τρόπους. • Διεύθυνση email • SMS • Συνεργάτες
Ημερομηνία λήξης	Ορίστε την ημερομηνία λήξης για τον σύνδεσμο. Μετά τη λήξη του συνδέσμου, τα άτομα με τα οποία κάνατε κοινοποίηση δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα αρχεία. Μπορείτε να παρατείνετε την περίοδο λήξης για έως και 90 ημέρες από σήμερα.
Κώδικας PIN	Ορίστε έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων.
Κοινοποιήστε το όνομα του ασθενούς	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλα τα άτομα που διαθέτουν τον σύνδεσμο θα δουν το όνομα του ασθενούς.
Παραχωρήστε άδεια για λήψη	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τον σύνδεσμο μπορούν να κάνουν λήψη των αρχείων.
Επιτρέψτε σχόλια	• Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κοινόχρηστου συνδέσμου. • Εάν καταργήσετε την επιλογή, ο παραλήπτης θα μπορεί να δει μόνο τα σχόλιά σας, αλλά δεν θα μπορεί να προσθέσει τα δικά του.
Σχόλιο	Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στην ενότητα σχολίων.

Λεπτομέρειες Case Talk

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία στο κοινόχρηστο περιστατικό. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Λεπτομέρειες Case Talk.

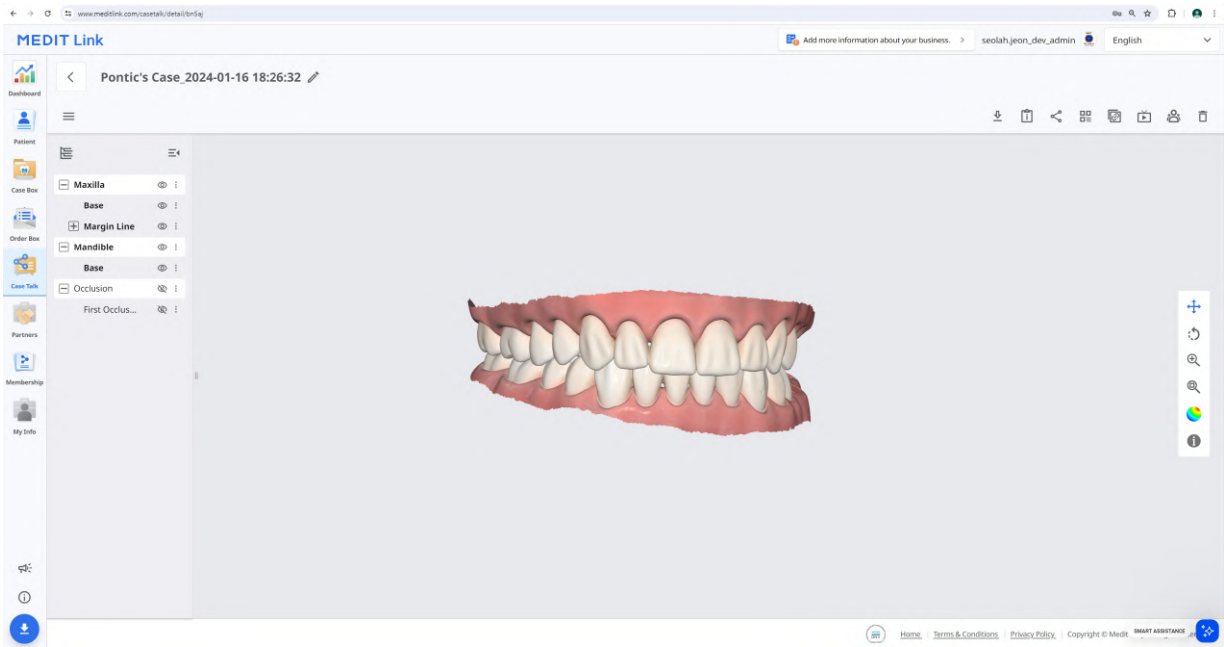

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων του περιστατικού στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τη ρύθμιση κοινοποίησης.
	Κωδικός QR	Κάντε κοινοποίηση του περιστατικού μέσω κώδικα QR.
	Αντιγραφή συνδέσμου	Αντιγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο στο πρόχειρο. Ο αντιγραμμένος σύνδεσμος εμφανίζει τα κοινόχρηστα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Διαγραφή	Διαγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο. Ο διαγραμμένος κοινόχρηστος σύνδεσμος δεν είναι πλέον προσβάσιμος.

Σημείωση


Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Web Viewer

Μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα δεδομένα μέσω του Case Talk σε ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου.

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας σχολιασμούς και σχόλια.

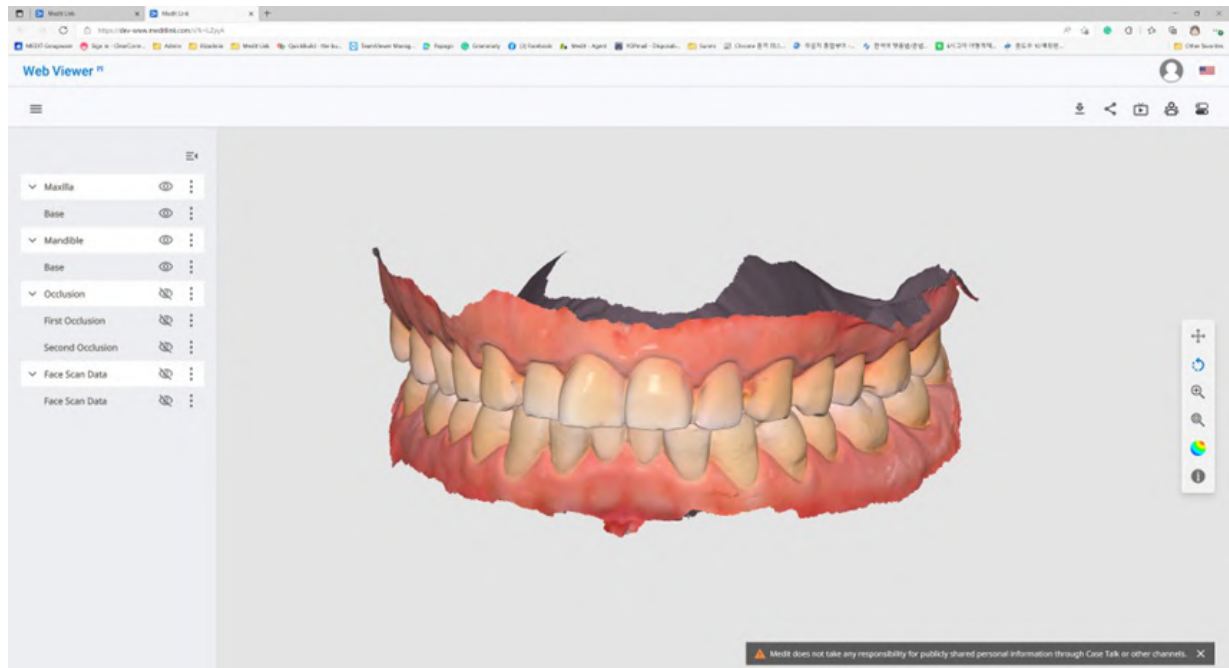

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων αυτού του περιστατικού στον υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις κοινοποίησης.
	Κωδικός QR	Αντιγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο στο πρόχειρο. Ο αντιγραμμένος σύνδεσμος εμφανίζει τα κοινόχρηστα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Αρίθμηση δοντιών	Αλλαγή του συστήματος σήμανσης των δοντιών.


Σημείωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Σχολιασμός

Μπορείτε να προσθέσετε σχoliaσμούς σε μια καθορισμένη θέση στο 3D μοντέλο. Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο μπορεί να δει τους σχoliaσμούς που προσθέτετε.

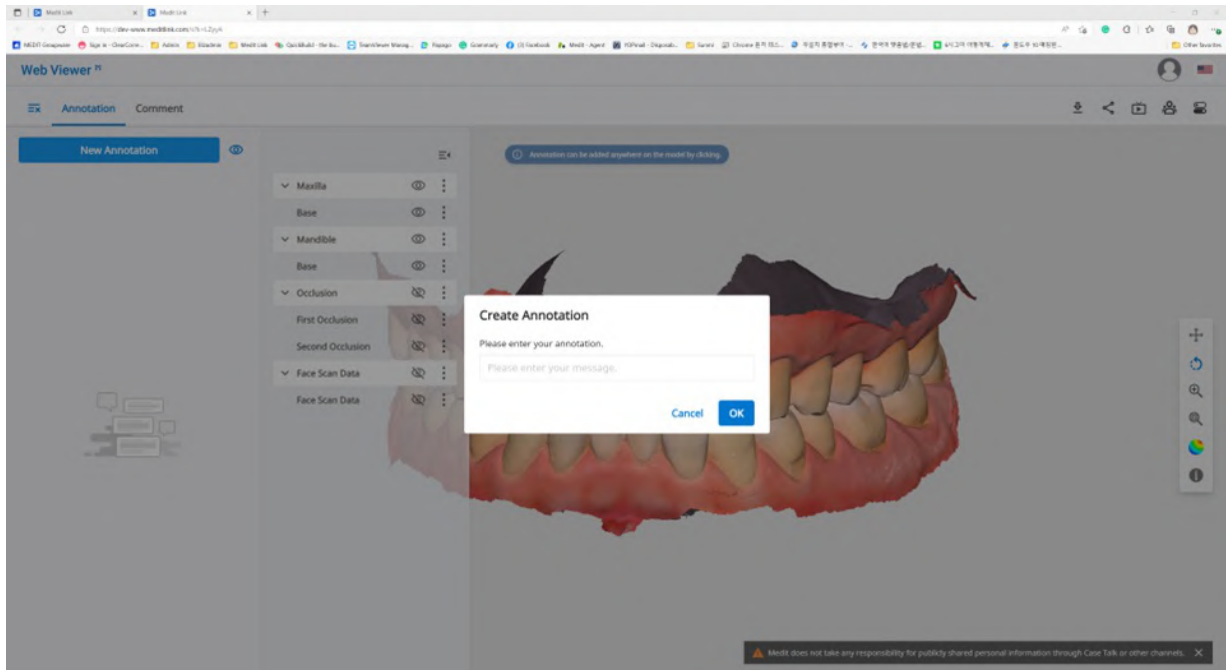

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχόλιο

1. Βρείτε το εικονίδιο μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε την καρτέλα «Σχoliaσμός». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Νέος σχoliaσμός» για να προσθέσετε έναν σχoliaσμό οπουδήποτε στα δεδομένα με ένα κλικ.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK» για να το αποθηκεύσετε.

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and a subtitle 'Please enter your annotation.'. Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχoliaσμούς ως ένα απλό κανάλι επικοινωνίας. Κάντε κλικ στον σχoliaσμό που δημιουργήθηκε για να εισάγετε μια απάντηση και πατήστε «Αποστολή».

This image shows a detail view of an annotation. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with trash and close icons. Below that is 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο μέσω της καρτέλας «Σχόλιο» στο μενού του Web Viewer.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχόλιο

Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο


Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση της οθόνης σας σε πραγματικό χρόνο.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Live

1. Κάντε κλικ στο «Live» για να κοινοποιήσετε την οθόνη του Web Viewer με τους συνδεδεμένους χρήστες.


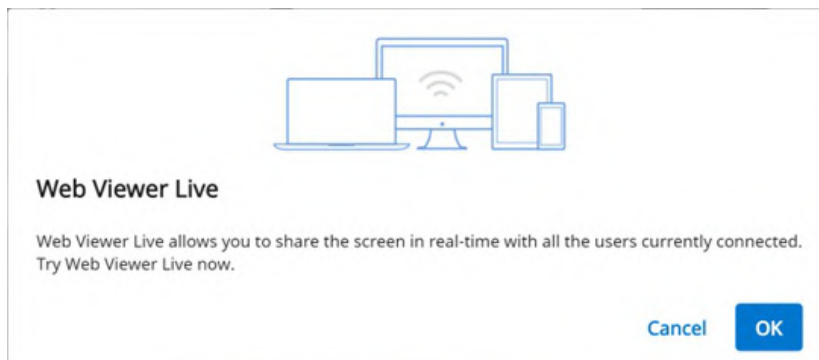


2. Κάντε κλικ στο «OK» για να ξεκινήσει η κοινοποίηση της οθόνης σας.
3. Άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο θα πρέπει να αποδεχτούν την κοινοποίηση οθόνης.
4. Η οθόνη του χρήστη που ξεκίνησε την κοινοποίηση οθόνης εμφανίζεται σε συγχρονισμό με την οθόνη του ατόμου που έλαβε το αίτημα.



Δέντρο δεδομένων

Όλα τα δεδομένα ομαδοποιούνται και εμφανίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε δεδομένα, να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια και ούτω καθεξής.

Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων

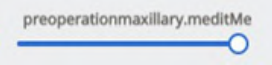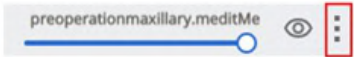Εμφάνιση / Απόκρυψη	Κάντε κλικ στο εικονίδιο «ματιού» για εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων από την προβολή. Ελέγξτε την ορατότητα των δεδομένων ως ομαδικό ή μεμονωμένο αρχείο.
Αδιαφάνεια	Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από ένα ορατό στοιχείο για να δείτε το ρυθμιστικό για αδιαφάνεια. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη διαφάνεια των δεδομένων σας. 
Εκτεταμένο μενού	Το εκτεταμένο μενού παρέχεται στη δεξιά πλευρά κάθε στοιχείου του Δέντρου δεδομένων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων εκτός από το τρέχον. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των τρεχόντων δεδομένων.

3D έλεγχοι μοντέλου

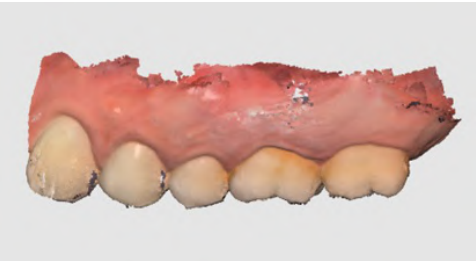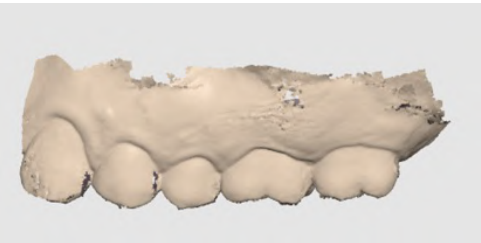	Μετατόπιση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίες εμφάνισης μοντέλου	Ενεργοποίηση υφής
		Υφή απενεργοποιημένη
		Εμφάνιση δεδομένων με πραγματικά χρώματα υφής. 
		Εμφάνιση δεδομένων με ένα μόνο χρώμα. 

Partners

Μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς συνεργάτες ώστε να ζητήσετε μια συνεργασία και να προβάλετε τη λίστα με τους τρέχοντες συνεργάτες.


Σημείωση

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα Google Maps δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link China.

Αναζήτηση συνεργατών


Μπορείτε να αναζητήσετε χρήστες του Medit Link με βάση το όνομα ή/και τη διεύθυνση της επιχείρησής τους.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα συνεργασίας σε μια επιχείρηση με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

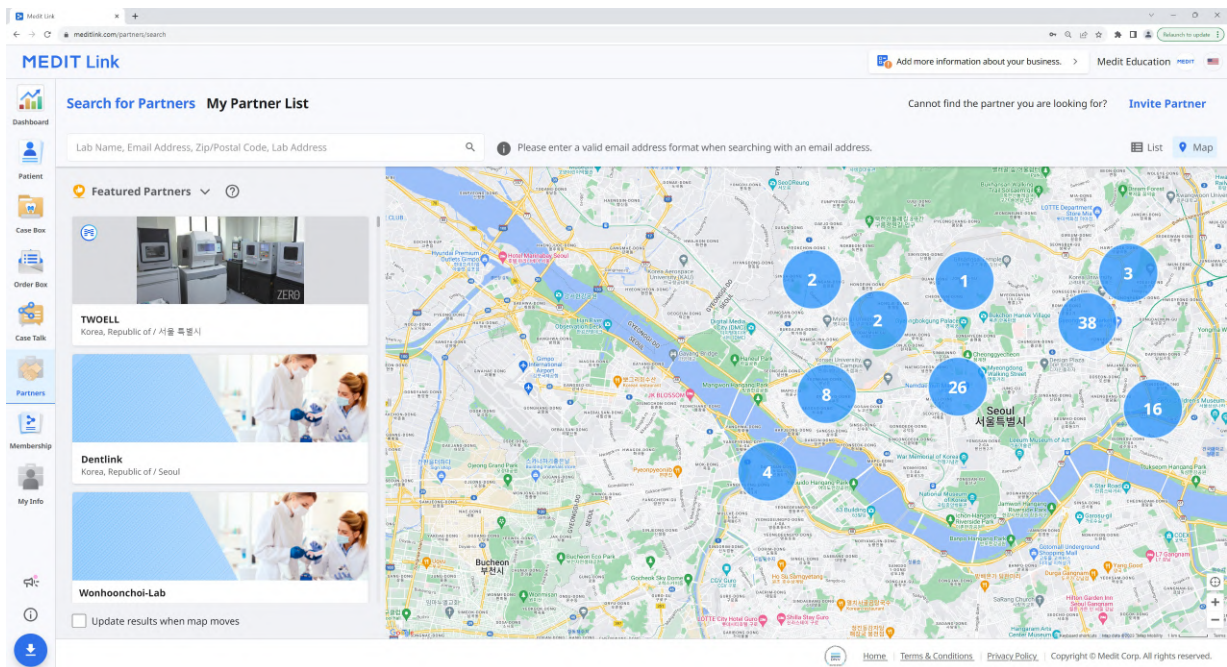

Η Λίστα συνεργατών μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνεργασίες με όλες τις υπάρχουσες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σας από τη λίστα συνεργατών μου.

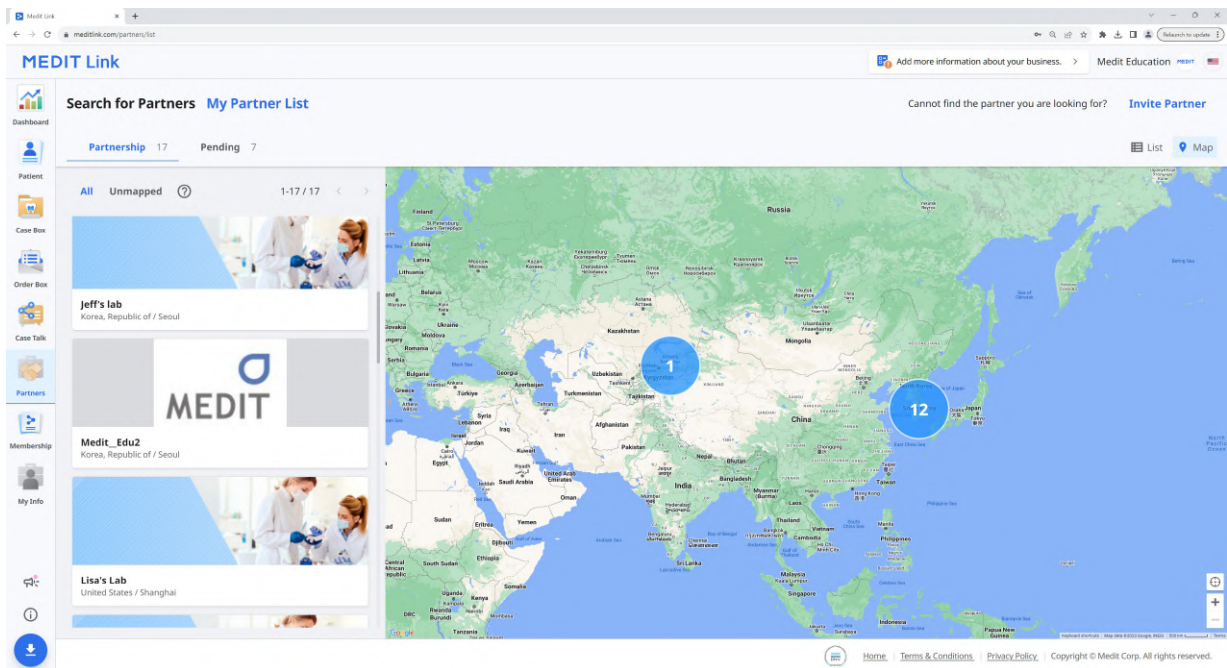

Πρόσκληση συνεργάτη

Εάν υπάρχει μια κλινική ή ένα εργαστήριο με τα οποία θέλετε να συνεργαστείτε, μπορείτε να κάνετε πρόσκληση για εγγραφή στο Medit Link. Η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα μόλις αποδεχτούν την πρόσκληση.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση συνεργάτη» στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email της επιχείρησης με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε και στείλτε μια πρόσκληση με αίτημα συνεργασίας.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Μόλις η προσκεκλημένη εταιρεία αποδεχτεί την πρόσκληση και εγγραφεί στο Medit Link, η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα.


Membership

Συνδρομή

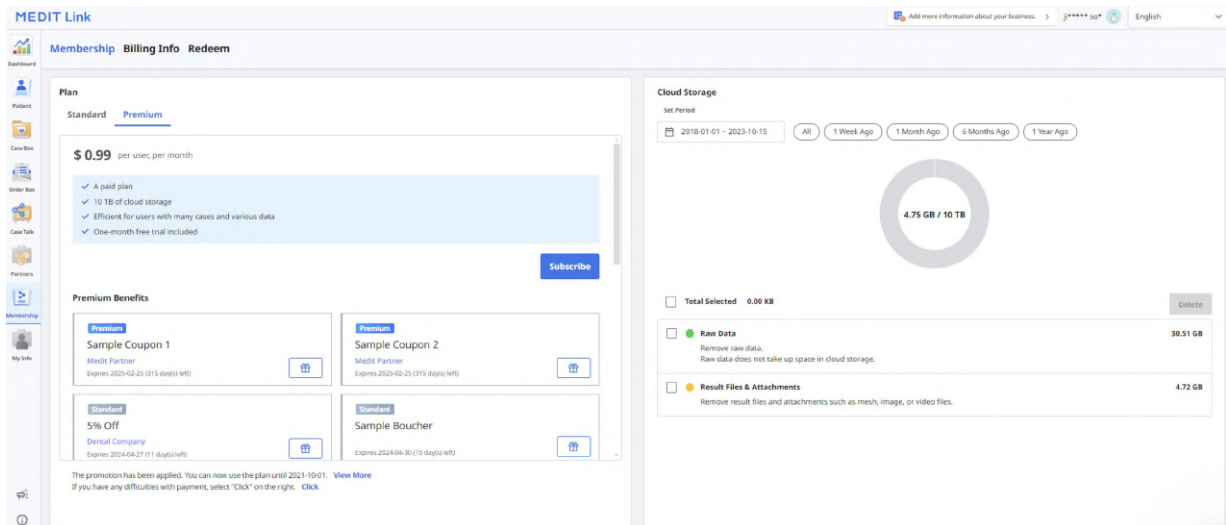

Πρόγραμμα

Μπορείτε να δείτε τι προσφέρει κάθε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών κουπονιών και των voucher, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της συνδρομής σας. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμά σας ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή.

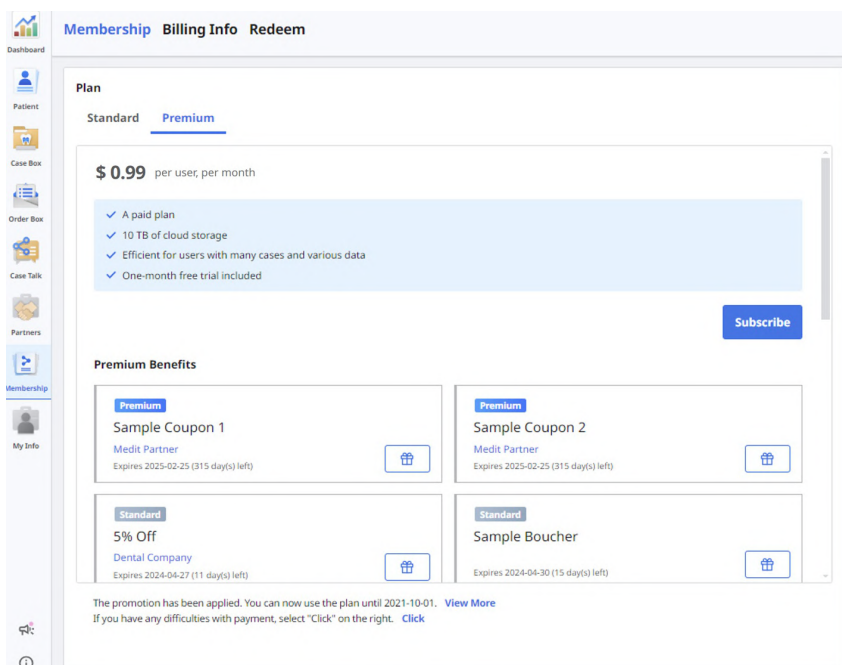

Το Medit Link παρέχει τα ακόλουθα προγράμματα συνδρομής:

Standard

- Δωρεάν τυπικό πρόγραμμα για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες
- 1 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για νέους χρήστες

Premium

- Πρόγραμμα επί πληρωμή
- 10 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για χρήστες με πολλά περιστατικά και διάφορους τύπους δεδομένων
- Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος ενός μήνα


	Standard	Premium
Αποθήκευση Cloud	1 GB	10 TB
Μηνιαία χρέωση	Δωρεάν	0,99 \$/μήνα
* Η Αποθήκευση Cloud δεν υπολογίζει τον χώρο που καταλαμβάνουν τα Ακατέργαστα δεδομένα.		

Σημείωση

Τα προγράμματα συνδρομής θα είναι διαθέσιμα για το Medit Link China. Μπορείτε να λάβετε το πρόγραμμα Premium δωρεάν μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της λειτουργίας.

Αποθήκευση Cloud

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud.

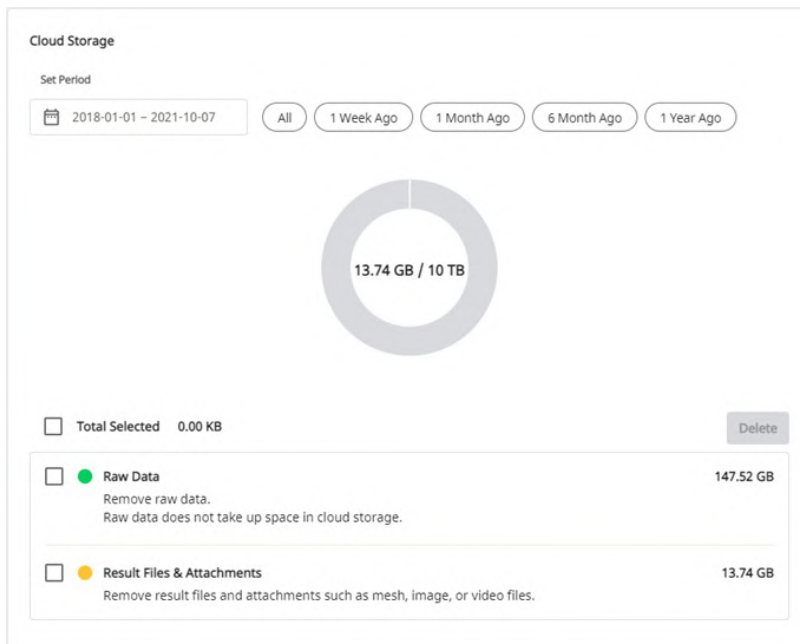


Ορισμός περιόδου	Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. • Όλα: Προβολή όλων των αρχείων. • Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.
Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρί. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να απελευθερώσετε χώρο.

Εγγραφή

Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα Standard ή σε πρόγραμμα Premium με κωδικό εξαργύρωσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Premium.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται μέσω της υπηρεσίας Stripe (www.stripe.com).

1. Μεταβείτε στην ενότητα Συνδρομή > Πρόγραμμα > Premium και κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή».

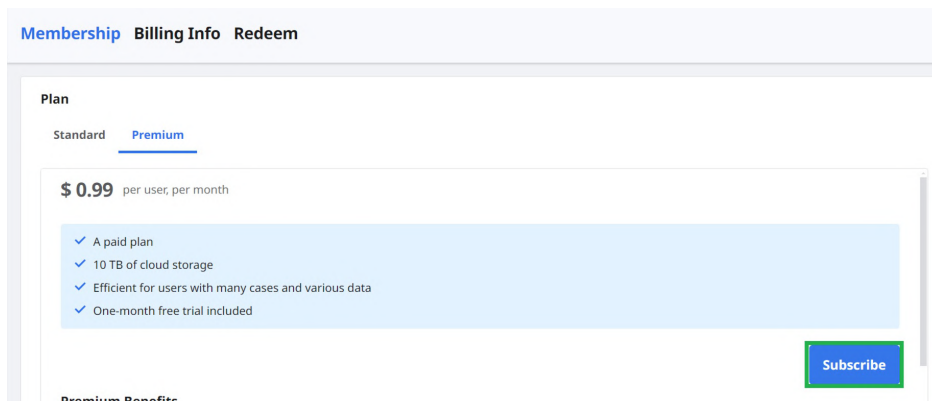

2. Ελέγξτε την περιγραφή του προγράμματος Premium και κάντε ξανά κλικ στην «Εγγραφή».

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close

Απεγγραφή

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Μετά την απεγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή Premium για τις υπόλοιπες ημέρες του συγκεκριμένου μήνα πληρωμής. Το πρόγραμμά σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

1. Κάντε κλικ στην «Απεγγραφή».
2. Κάντε κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής».

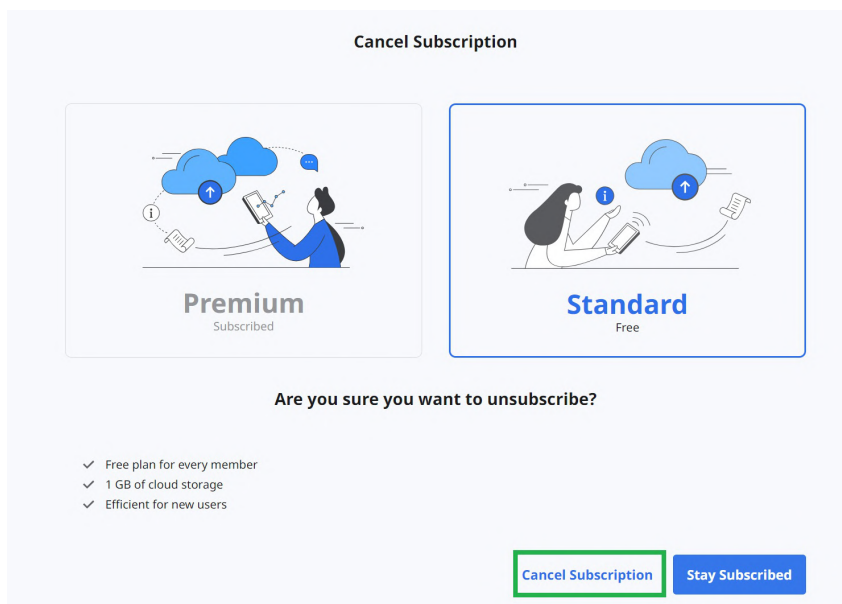

3. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απεγγραφείτε, κάντε ξανά κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής» στο νέο αναδυόμενο παράθυρο.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Η συνδρομή σας έχει ακυρωθεί.
5. Το πρόγραμμά σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Πληροφορίες χρέωσης

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό πληρωμών για τις εγγραφές μέλους, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμολογίου για κάθε πληρωμή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αλλάξετε την μέθοδο πληρωμής, η οποία θα εφαρμοστεί για την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία μεθόδου πληρωμής».

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Κάντε κλικ στην «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής».

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάντε κλικ στην «Προσθήκη».

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Η μέθοδος πληρωμής που προστέθηκε πρόσφατα θα οριστεί ως προεπιλεγμένη και θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη πληρωμή.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού επέκτασης δίπλα στην μέθοδο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε στο παράθυρο διαλόγου χρέωσης.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Κάντε κλικ στο «Ορισμός προεπιλογής» για να ορίσετε την επιλεγμένη κάρτα ως προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

Make default
Delete


BILLING INFORMATION

Εξαργύρωση

Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης που παρέχεται ως μέρος της προσφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Premium συνδρομή μαζί με τον κωδικό εξαργύρωσης.


Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης

1. Εισάγετε τον κωδικό εξαργύρωσης και κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

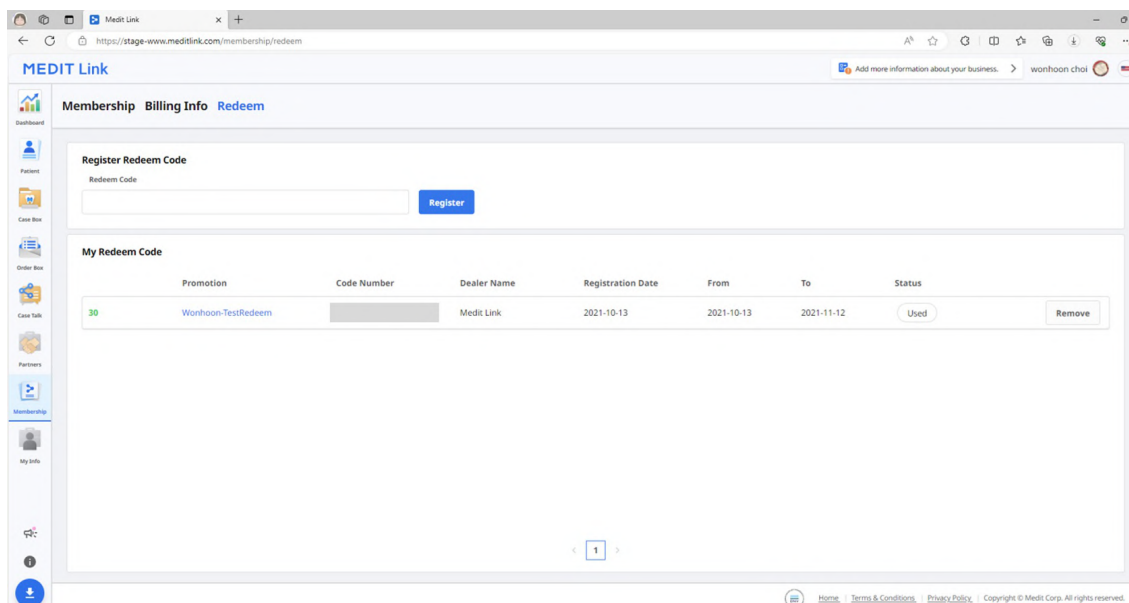

2. Διαβάστε την ειδοποίηση και επιλέξτε «Καταχώρηση» ή «Εφαρμογή» στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.

- ο **Καταχώρηση**: Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό εξαργύρωσης αργότερα μετά την εγγραφή.
- ο **Εφαρμογή**: Καταχωρήστε και ενεργοποιήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Η έκπτωση της προσφοράς ισχύει άμεσα.

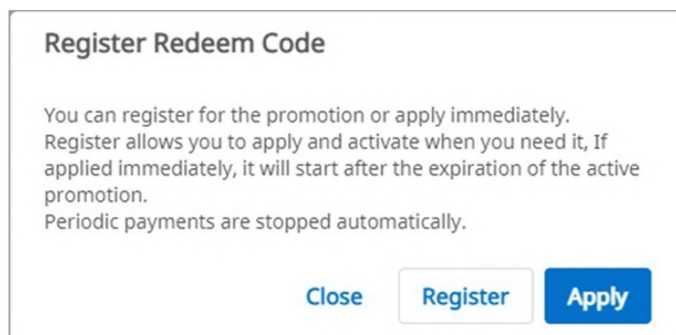

Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς κωδικούς εξαργύρωσης, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση» δίπλα στον κωδικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 - ο Εάν δεν υπάρχει κωδικός σε κατάσταση «Activated», αυτός που θα επιλέξετε θα εφαρμοστεί άμεσα.
 - ο Εάν υπάρχει κωδικός που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ο πρόσφατα επιλεγμένος κωδικός αλλάζει σε κατάσταση «Waiting». Όταν λήξει ο πρόσφατα ενεργοποιημένος κωδικός εξαργύρωσης, ο νέος κωδικός εξαργύρωσης σε κατάσταση «Waiting» θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.


Σημείωση

Μόνο ένας κωδικός εξαργύρωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και μόνο ένας μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση «Waiting».

My Info

Ο λογαριασμός μου

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή και να ελέγξετε την κατάσταση της συνδρομής σας.

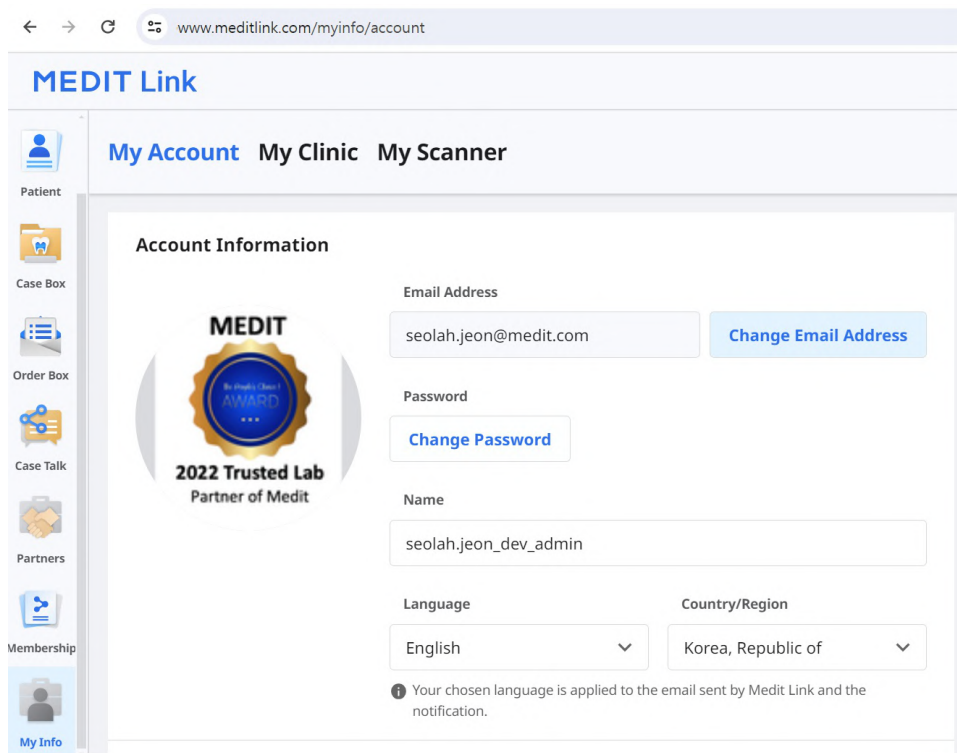

The screenshot shows the 'My Account' page of the MEDIT Link website. The browser address bar displays 'www.meditlink.com/myinfo/account'. The page has a light blue header with the 'MEDIT Link' logo and navigation tabs for 'My Account', 'My Clinic', and 'My Scanner'. A left sidebar contains icons for 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info' (which is highlighted). The main content area is titled 'Account Information' and features a circular profile picture of a person. To the right of the profile picture is a gold medal icon with the text '2022 Trusted Lab Partner of Medit'. The account details include: Email Address (seolah.jeon@medit.com) with a 'Change Email Address' button; Password (masked with dots) with a 'Change Password' button; Name (seolah.jeon_dev_admin); Language (English) and Country/Region (Korea, Republic of) dropdown menus. A note at the bottom states: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.'

Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κλινική ή το εργαστήριό σας. Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς διαχειριστή.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Ο σαρωτής μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συνδεδεμένης συσκευής για τον λογαριασμό.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No. Type Serial Number Usage Time Last Connected Last Calibrated Warranty Start Date Warranty Expiry Da... Days Left

1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

52

Άνοιγμα του μενού

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Σχετικές ιστοσελίδες

Μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Medit Academy, το Medit Academy YouTube και το Κέντρο βοήθειας Medit.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


53

Λήψη εφαρμογής Medit Link

Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος εγκατάστασης από την ιστοσελίδα. Αυτό το μενού είναι χρήσιμο εάν χάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος ή εάν διαθέτετε ένα παλιό πρόγραμμα εγκατάστασης.

Σημείωση

Το Medit Link ενημερώνεται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε σύνδεση στο διαδίκτυο.

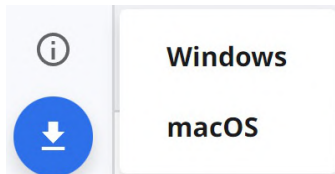

Επισκόπηση

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1.Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1.First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1.Alexa				0	2023-10-19	
1.Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1.Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1.Orange				0	2023-10-24	
1.Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Γραμμή τίτλου	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Γραμμή τίτλου για λεπτομερείς πληροφορίες.
2	Μενού	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Μενού για λεπτομερείς πληροφορίες.
3	Εργαλεία και λειτουργίες	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Πρόγραμμα προβολής αρχείων και Εφαρμογή Medit Link > Επιλογές προβολής για λεπτομερείς πληροφορίες.
4	Λίστα περιστατικών	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Φιλτράρισμα και αναζήτηση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.

Τύπος λογαριασμού		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Λογαριασμοί κλινικής	Διαχειριστής	O	O	O	X	X	O	O	O
	Μέλος	O	O	O	X	X	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O
Λογαριασμοί εργαστηρίου	Διαχειριστής	X	X	X	O	O	O	O	O
	Μέλος	X	X	X	O	O	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O

Γραμμή τίτλου

Η γραμμή τίτλου παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως πληροφορίες λογαριασμού, ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, ρυθμίσεις και κατάσταση δικτύου.



Οι Πληροφορίες μου

Οι πληροφορίες μου περιέχουν βασικές πληροφορίες χρήστη, όπως εικόνα προφίλ, όνομα κλινικής ή εργαστηρίου, διεύθυνση email και όνομα χρήστη.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να δείτε ειδοποιήσεις που σχετίζονται με συνεργασίες, παραγγελίες και διαδικασίες εργασίας.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Επιλέξτε το πλαίσιο ώστε να εμφανίσετε μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα. |
| 2 | Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για να μετακινηθείτε αμέσως στο σχετικό περιστατικό ή την ιστοσελίδα. |

Ειδοποίηση και ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Ρυθμίσεις

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το πρόγραμμα.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι καλή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τους ακόλουθους περιορισμούς:

- Ορισμένες λειτουργίες θα γίνουν περιορισμένες, όπως η παραγγελία ενός περιστατικού, η δημιουργία περιστατικού, η κοινοποίηση μέσω Case Talk και ο συγχρονισμός στο cloud.
- Η συνολική απόδοση της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί λόγω των επιπτώσεων του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισέλθετε στη Λειτουργία εκτός σύνδεσης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μόλις συνδεθείτε.

Σημείωση

Το σύμβολο διαδικτύου υποδεικνύει την ταχύτητα απόκρισης μεταξύ της τρέχουσας περιοχής και του AWS (Amazon Web Service). Δεν ορίζει την ταχύτητα του διαδικτύου σας, επομένως ορισμένες φορές μπορεί να εμφανίζει την κατάσταση ως αδύναμη ή κακή, παρόλο που η ταχύτητα του διαδικτύου σας είναι αρκετά γρήγορη.

Εάν η άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο, η ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται ως αδύναμη ή κακή και η συνολική απόδοση του Medit Link μπορεί να είναι κακή. Σε αυτήν την περίπτωση, μην κάνετε κοινοποίηση του διαδικτύου σε άλλες διεργασίες.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα «Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων» αποτελεί τεράστιο μέρος της διαδικασίας του διαδικτύου. Εάν το σύμβολο εμφανίζει αδύναμη ή κακή κατάσταση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων και απενεργοποιήστε την «Αυτόματη μεταφόρτωση».

Ρυθμίσεις

Γενικά

Παρέχει επιλογές για τη συνολική ρύθμιση του συστήματος.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Αποθήκευση φακέλου	Καθορίστε έναν φάκελο για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων δεδομένων που δημιουργούνται από το Medit Link και τα συνδεδεμένα με αυτό προγράμματα.	
Φάκελος εγκατάστασης εφαρμογών	Καθορίστε μια διαδρομή εγκατάστασης για τα Medit Apps και τα partner apps που είναι διαθέσιμα στο App Box.	
Ρυθμίσεις γλώσσας	Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα.	
Αρίθμηση δοντιών	Επιλέξτε ένα σύστημα αρίθμησης δοντιών μεταξύ του FDI και των ΗΠΑ.	
Ειδοποιήσεις	Όταν είναι επιλεγμένο, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις προγράμματος.	
Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων	Όταν είναι επιλεγμένο, τα ακατέργαστα δεδομένα μεταφορτώνονται αυτόματα στο cloud. Βοηθά στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχικών δεδομένων και την απρόσκοπτη σάρωση όταν χρησιμοποιείτε το Medit Link με τον ίδιο λογαριασμό από άλλον υπολογιστή. Το αρχικό αντίγραφο ασφαλείας στο cloud ισχύει μόνο για δεδομένα που αποκτήθηκαν από το Medit Scan for Clinics.	
Γρήγορη σάρωση	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα τα παρακάτω στάδια σάρωσης στο Medit Scan for Clinics χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις πληροφορίες της φόρμας. • Προεπεμβατικά άνω γνάθου • Προεπεμβατικά κάτω γνάθου • Σάρωση προσώπου	
Επιλογές προβολής	Προηγμένη απόδοση	Όταν είναι επιλεγμένο, το 3D μοντέλο εμφανίζεται σε πιο ζωντανή και ρεαλιστική απόδοση.
	Ρυθμίστε την υφή του χρώματος	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του 3D μοντέλου. * Τα χρώματα που προκύπτουν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το Medit Link όταν κάνετε άνοιγμα των ίδιων δεδομένων από άλλο λογισμικό.
Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρήστη της Medit	Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη της Medit. • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. • Δεν συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.	
Προεπιλεγμένη σελίδα μετά τη σύνδεση	Επιλέξτε το προεπιλεγμένο μενού που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος. • Οι λογαριασμοί κλινικής μπορούν να επιλέξουν μεταξύ Patient και Case Box • Οι λογαριασμοί εργαστηρίου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ In Box και Work Box	

Διαχείριση αποθήκευσης

Ελέγξτε και διαχειριστείτε τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο και αυτόν του cloud.

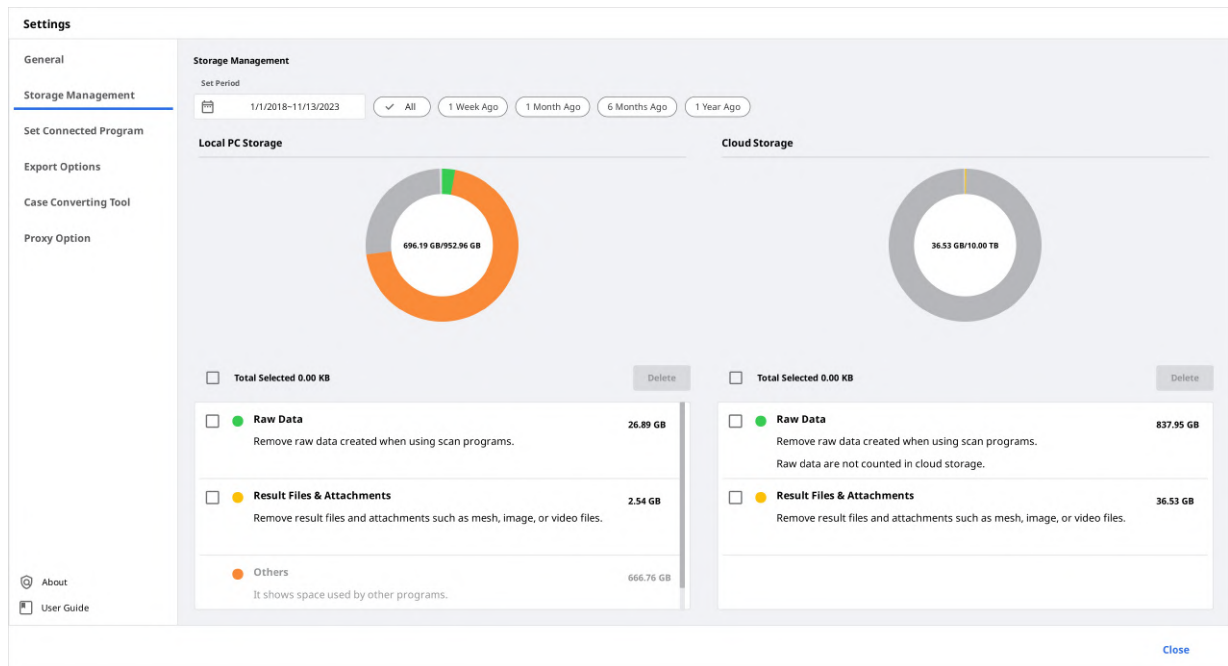

Ορισμός περιόδου

Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου.

- Όλα: Προβολή όλων των αρχείων.
- Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.

Τοπικός αποθηκευτικός χώρος

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή.

Ακατέργαστα δεδομένα	Αφαιρέστε τα επιλεγμένα ακατέργαστα δεδομένα από τον υπολογιστή. Εάν τα ακατέργαστα δεδομένα έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Καταργήστε τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων από τον υπολογιστή, όπως πλέγμα, εικόνες και βίντεο. Εάν αυτά τα αρχεία έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
Υπόλοιπα	Δείτε τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος και άλλων προγραμμάτων. Εμφανίζει την αποθηκευτική δυνατότητα του υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα αρχεία από το Medit Link.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον υπολογιστή.

Αποθήκευση Cloud

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του cloud.

Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρι. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς κ.λπ.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Αγορά αποθηκευτικού χώρου	Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε Τυπικό πρόγραμμα, κάντε εγγραφή σε Premium για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό σας χώρο στο cloud.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να ελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος

Διαχειριστείτε τα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση σε Medit Link.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ Medit Scan for Clinics

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα προγράμματα:

	Λογαριασμός κλινικής	Λογαριασμός εργαστηρίου
Πρόγραμμα σάρωσης	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Σημείωση

Η ενσωμάτωση των ακόλουθων υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμη σε Medit Link για Mac.

- Medit Scan for Labs

Επιλογές εξαγωγής

Ορίστε τον τρόπο εξαγωγής αρχείων από το Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

64

Τύπος CAD	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θα προσαρμόσει τα αποτελέσματα με βάση την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του τελικού αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση & Συνδυασμός	Συμπίεση αρχείων: Κάντε συμπίεση όλων των αποτελεσμάτων σε ένα μόνο αρχείο. Συνδυασμός μεμονωμένων αρχείων: Συνδυάστε όλα τα αποτελέσματα για την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο σε ένα αρχείο. Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα προγράμματα που δεν μπορούν να εισάγουν και να λειτουργήσουν με πολλά αρχεία, μπορείτε να τα συγχωνεύσετε σε ένα ώστε να λειτουργούν με αυτά τα προγράμματα.
Επιλογές όταν προυπάρχει ίδιος φάκελος ή αρχείο.	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ενέργεια για περιστατικά όπου ο ίδιος φάκελος ή το όνομα αρχείου υπάρχει στη διαδρομή προορισμού. • Ερώτηση πάντα κατά την εξαγωγή. • Εξαγωγή νέου αρχείου και αντικατάσταση των υπάρχοντων αρχείων. Το αρχείο που είναι αποθηκευμένο τη δεδομένη στιγμή θα χαθεί. • Δημιουργήστε ένα φάκελο και εξαγάγετε τα αρχεία
Κανόνες για ονομασία φακέλου	Καθορίστε κανόνες για τη δημιουργία ονομασιών φακέλου κατά την εξαγωγή αρχείων. Οι καθορισμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε ονομασίες φακέλων και το εξαγόμενο αρχείο θα αποθηκευτεί στον δημιουργημένο φάκελο. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας
Κανόνες για ονομασία αρχείου	Ορίστε κανόνες για το όνομα του αρχείου που θα εξαχθεί. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας

Εργαλείο μετατροπής περιστατικών

Μπορείτε να μετακινήσετε περιστατικά μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών εξαγοντας υπάρχοντα περιστατικά του λογαριασμού ή εισάγοντας περιστατικά που εξάγονται από άλλους λογαριασμούς.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

Εξαγωγή περιστατικού

Εξαγωγή περιστατικών του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού του τοπικού υπολογιστή.

1. Ανοίξετε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Total Patients: 3500

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. Στην ενότητα Εξαγωγή, ορίστε μια περίοδο ή αναζητήστε περιστατικά προς εξαγωγή, εάν είναι απαραίτητο.

4. Επιλέξτε περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε από τη λίστα στην ενότητα «Αρχεία προς εξαγωγή».

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Ορίστε το όνομα του αρχείου επεξεργάζοντας το όνομα του περιστατικού στο πεδίο Όνομα αρχείου.
6. Ορίστε το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των επιλεγμένων περιστατικών.
7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου πραγματοποιείται η εξαγωγή του αρχείου.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

9. Τα εξαγόμενα περιστατικά αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου .meditex.


Εισαγωγή περιστατικού

1. Ανοίξετε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.


2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

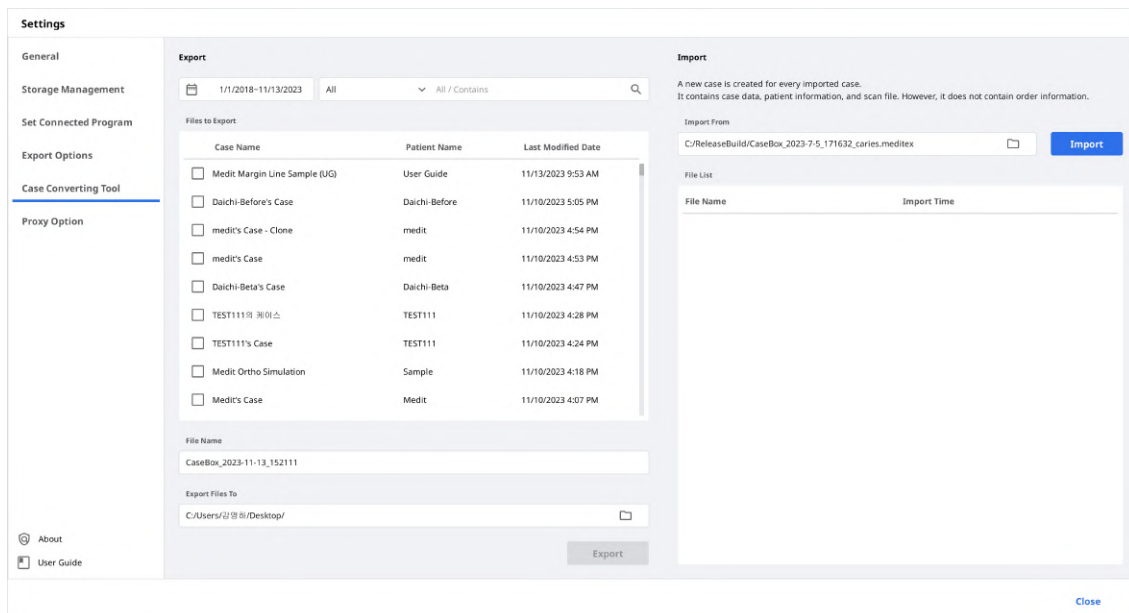

3. Στην ενότητα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας για το αρχείο .meditex που θέλετε να εισάγετε.

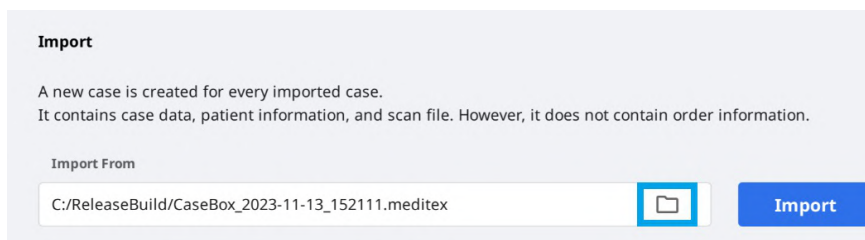

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» και ελέγξτε τα αρχεία προς εισαγωγή στην παρακάτω λίστα.

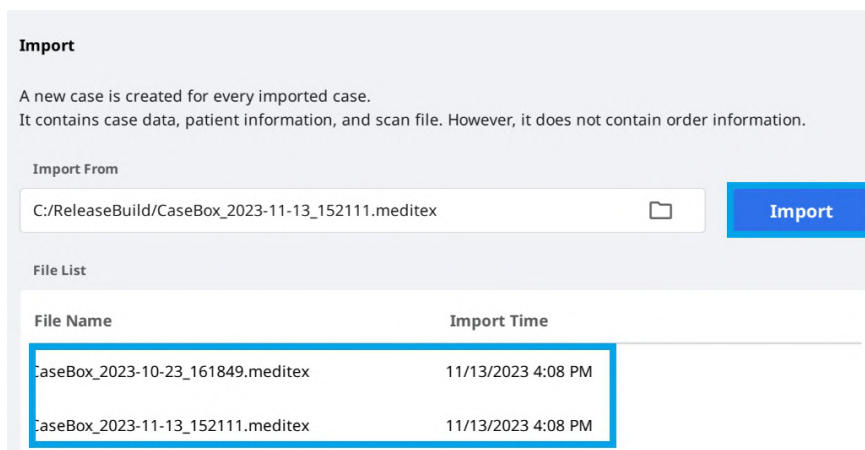

5. Το εισαγόμενο περιστατικό θα εμφανιστεί επίσης στο Case Box (λογαριασμός κλινικής) ή στο Work Box (λογαριασμός εργαστηρίου).

Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης

Σε ορισμένα περιορισμένα περιβάλλοντα διαδικτύου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαδικτύου.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Σχετικά

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Οδηγός χρήστη


Κάντε λήψη του οδηγού χρήστη για το Medit Link.

Το άνοιγμα του οδηγού χρήστη απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μενού

Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα – τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

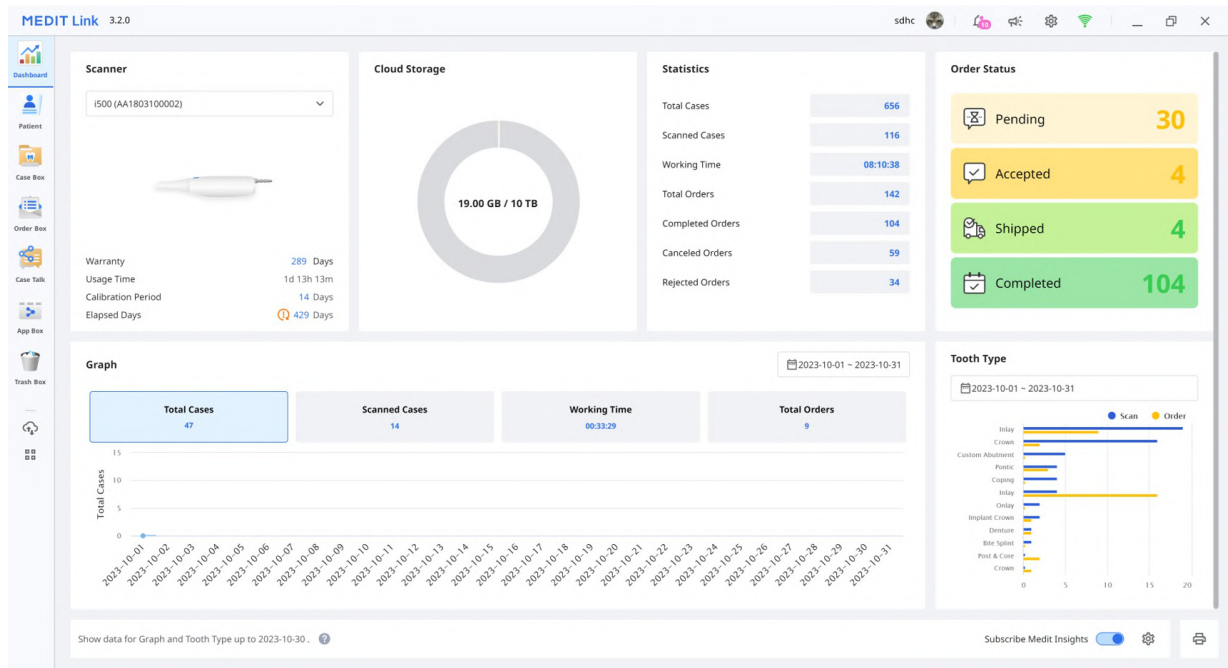

Σημείωση

Ανατρέξτε στο [Ιστοσελίδα Medit Link > Dashboard](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dashboard και το Medit Insights.

Patient

Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε ασθενείς στο μενού Patient.

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Προσθήκη νέου ασθενή

1. Κάντε κλικ στο «Νέος ασθενής».

New Patient

Patient Name*

Gender
☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Νέος ασθενής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Διαγραφή ασθενή

Σημείωση

Μπορείτε να διαγράψετε έναν ασθενή μόνο όταν δεν υπάρχουν περιστατικά για αυτόν.

1. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα.

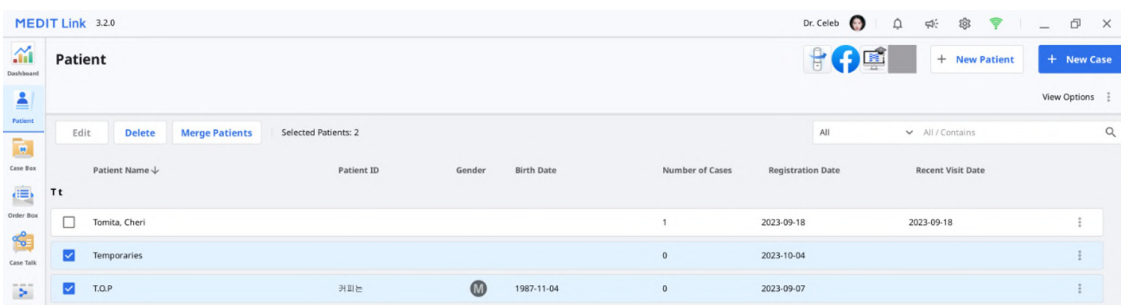

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.O.P	키링	♂	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. Κάντε κλικ στην «Διαγραφή».

Συγχώνευση ασθενών

Μπορείτε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά πολλών ασθενών για έναν ασθενή.

1. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα.

MEDIT Link 3.2.0 Dr. Celeb

Patient

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	키리노	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Κάντε κλικ στην «Συγχώνευση ασθενή».
3. Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο για τον οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά.
4. Όλα τα περιστατικά συγχωνεύονται στον ασθενή-στόχο και διατηρούνται οι πληροφορίες ασθενούς για τον ασθενή-στόχο.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να προχωρήσετε στη συγχώνευση.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Order

Open

6 Type Method Material Shade Favorites

Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure
Custom Abutment + Implant Crown	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture

7 Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

Teeth Arch

Cancel Save

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε διαθέσιμες βασικές λειτουργίες: Κουμπί για σάρωση ή άνοιγμα, κουμπί παραγγελίας, εικονίδια εφαρμογών.
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Φόρμα, Πρόγραμμα προβολής αρχείων.
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων.
5	Εμφάνιση του UI για εγγραφή φόρμας για το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.
6	Παρέχετε τύπο/μέθοδο/υλικό/πληροφορίες απόχρωσης ώστε να γίνει επιλογή από τους χρήστες για τον επιλεγμένο αριθμό δοντιού.
7	Εμφανίστε τις πληροφορίες τύπου/μεθόδου/υλικού/πληροφοριών απόχρωσης που εφαρμόζονται στα επιλεγμένα δόντια.

Καρτέλες σε Case Box/Work Box

Φόρμα	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Η καρτέλα φόρμας παρέχει ένα UI για την εισαγωγή βασικών πληροφοριών για εργασίες σάρωσης, όπως τύπος, μέθοδος, υλικό για αριθμούς δοντιών και επιλογές σάρωσης. Οι πληροφορίες που εισάγετε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα σάρωσης και χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες παραγγελίας όταν κάνετε μια παραγγελία με τον συνεργάτη σας.	Προβολή αρχείων αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από προγράμματα σάρωσης και CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Λειτουργίες σε Case Box/Work Box

Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφανίζει την κατάσταση του περιστατικού.
	Μετάβαση στο Order Box/In Box	Παρέχει μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις & Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Ιστορικό περιστατικού	Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του περιστατικού. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Διαγραφή	Διαγραφή του περιστατικού. Δεν μπορείτε να διαγράψετε παραγγελθείσα περιστατικά ή περιστατικά που δημιουργήθηκαν εκτός σύνδεσης.
	Κλωνοποίηση	Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του τρέχοντος περιστατικού στο Case Box. Όλα τα δεδομένα θα αντιγραφούν στο κλωνοποιημένο περιστατικό. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αναπαραγωγή των πληροφοριών θεραπείας για τον ίδιο ασθενή ή στην πραγματοποίηση πρόσθετης παραγγελίας με τις ίδιες πληροφορίες ή αρχεία.
	Επισύναψη	Επισύναψη αρχείων σε διάφορες μορφές.
	Εξαγωγή	Εξαγωγή αρχείων σάρωσης ή αποτελεσμάτων CAD στον τοπικό υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή αρχείου που προτιμάτε κατά την εξαγωγή των αρχείων. Τα εξαγόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικό CAD και CAM για περαιτέρω εργασία.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινοποίηση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα. Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση του συνδέσμου ελεύθερα με οποιονδήποτε ή μόνο με συγκεκριμένα άτομα. Ένας κώδικας PIN ή μία ημερομηνία λήξης του συνδέσμου μπορεί να οριστεί για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
	Υποβολή αιτήματος υποστήριξης	Μεταβείτε σε μια σελίδα Κέντρου βοήθειας της Medit για να υποβάλετε το αίτημα υποστήριξης.

Order Box/In Box

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/παραλαβή).
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων.
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
5	Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
6	Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.

Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία, όπως αριθμός παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημειώσεις και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του Case Talk στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

Σημείωση

Η υπηρεσία Case Talk απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

MEDIT Link 3.3.0

admin

Case Talk

2018-01-01 ~ 2024-04-23

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

1

Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

App Box

Το App Box παρέχει διάφορα πρόσθετα προγράμματα που συμπληρώνουν τη βασική ροή εργασιών σάρωσης και βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις παρεχόμενες εφαρμογές για να δημιουργήσετε οδοντιατρικές συσκευές, να αναλύσετε δεδομένα σάρωσης, για βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας διαβούλευσης ή για να βελτιώσετε τη διαδικασία εργασίας σας.

MEDIT Link 3.3.0

Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook! Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Join Now

Explore Medit Resources News, tips, and expert insights on Digital Dentistry

Visit Now

All Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

Medit DCM Converter Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format

Update

Medit Smile Design Simulation of teeth movement for orthodontic cases

Installed

Medit Ortho Simulation Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...

Install

Action Gate (ヨシダ・Yoshida) Comprehensive dental PMS

Install

Management

DentWeb(덴트웹) Integration Comprehensive dental PMS

Install

EasyRx Integration Universal orthodontic LMS

Install

Open Dental Integration Quality software for dental offices

Install

iie systems connector PRIM specialized for orthodontics

Install

OneClick Integration App Osstem's easy-to-use PMS

Install

i-Pro Integration Comprehensive dental PMS

LOGOSw Integration Add a link between LOGOSw and Medit Link

DentalCAD Integration Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.

Action Gate (ヨシダ・Yoshida) Comprehensive dental PMS

Andcom Integration Convenient dental PMS

Όλα


Η καρτέλα «Όλα» εμφανίζει τη λίστα όλων των παρεχόμενων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων εφαρμογών που σχεδιάστηκαν από τη Medit (Medit Apps) και των partner apps (εφαρμογές συνεργατών), οι οποίες αποτελούν εφαρμογές ενοποίησης με συνεργάτες της Medit από διαφορετικούς τομείς της ψηφιακής οδοντιατρικής, όπως η 3D εκτύπωση, το λογισμικό CAD/CAM, και τα λοιπά.

Medit Apps

Η καρτέλα «Medit Apps» εμφανίζει μόνο τη λίστα των αρχικών εφαρμογών που σχεδιάστηκαν από τη Medit.

Ληφθέντα

Η καρτέλα «Ληφθέντα» εμφανίζει τη λίστα με τις τρέχουσες εγκατεστημένες εφαρμογές στον υπολογιστή σας και τις εφαρμογές που έχουν ιστορικό λήψης από τον λογαριασμό χρήστη.

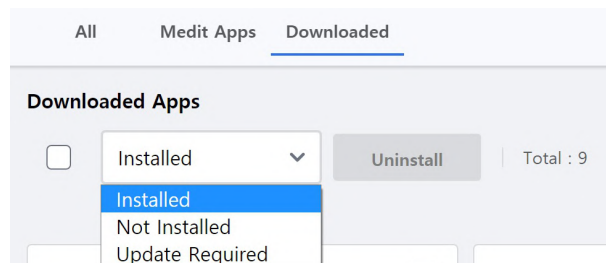

- **Εγκατεστημένες:** Η επιλογή εμφανίζει μόνο εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο χρήστης την δεδομένη στιγμή.
- **Μη εγκατεστημένο:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προβάλετε εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει σε άλλους υπολογιστές, ώστε να μπορείτε να τις εγκαταστήσετε γρήγορα.
- **Απαιτείται ενημέρωση:** Αυτή η επιλογή εμφανίζει μόνο εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον τρέχοντα υπολογιστή και θα πρέπει να ενημερωθούν.

Trash Box

Το Trash Box αποθηκεύει προσωρινά τα διαγραφμένα περιστατικά. Οποιαδήποτε περιστατικό στο Trash Box μπορεί είτε να αποκατασταθεί είτε να διαγραφεί οριστικά.

⚠ Προσοχή

Τα δεδομένα που διαγράφονται από το Trash Box θα διαγραφούν οριστικά από τον υπολογιστή σας και τον διακομιστή και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_일물만트 46, 47's Case - Clone - Clone	일물만트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών

Ο Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών σας βοηθά να κάνετε μεταφόρτωση και λήψη των περιστατικών στο Medit Link. Μπορείτε να κάνετε μεταφόρτωση πολλών περιστατικών στο cloud ή να κάνετε λήψη στον τοπικό υπολογιστή σας.

[illegible]

Μεταφόρτωση

Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να μεταφορτωθούν.
Μεταφόρτωση όλων	Μεταφόρτωση όλων των περιστατικών στο cloud.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων μεταφόρτωσης.
	Μεταφόρτωση περιστατικού στο cloud.
	Ακύρωση μεταφόρτωσης του περιστατικού.
	Επανάληψη μεταφόρτωσης περιστατικού.

Λήψη


Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να ληφθούν.
Λήψη όλων	Λήψη όλων των περιστατικών στον υπολογιστή.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων λήψης.
	Λήψη περιστατικού στον υπολογιστή.
	Ακύρωση λήψης του περιστατικού.
	Επανάληψη λήψης περιστατικού.

Σχετικές ιστοσελίδες

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε μενού που είναι διαθέσιμα μόνο στην Ιστοσελίδα Medit Link, όπως οι My Info, Partners και Membership. Ανατρέξτε στο Medit Link > Ιστοσελίδα Medit Link > [Partners](#), [Membership](#), και [My Info](#) για λεπτομερείς περιγραφές των μενού της Ιστοσελίδας του Medit Link.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Medit, το Medit Shop, όπου μπορείτε να αγοράσετε εκτεταμένες εγγυήσεις για σαρωτές και άλλα προϊόντα της Medit, όπως σακίδια σαρωτή.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Κέντρο βοήθειας της Medit, το κανάλι Medit Academy στο YouTube και την διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Medit Academy.

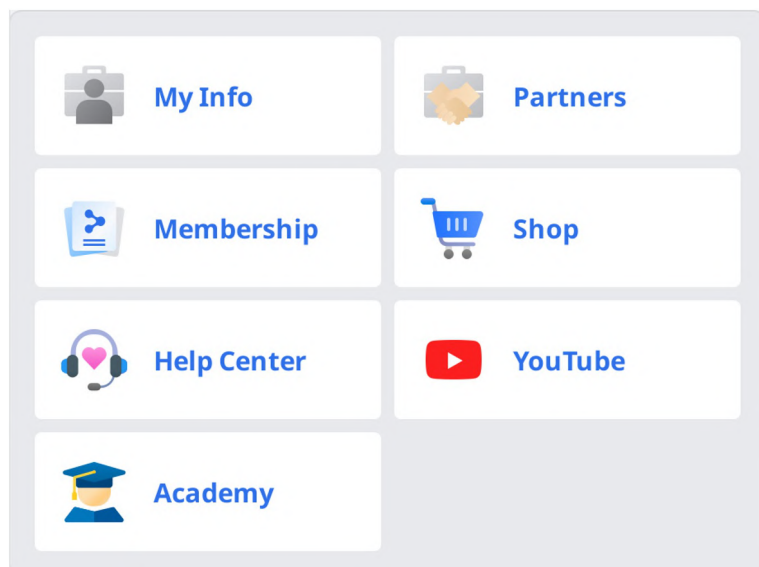

Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Το Πρόγραμμα προβολής αρχείων ομαδοποιεί και εμφανίζει διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν από προγράμματα που συνδέονται με το Medit Link και των δεδομένων που επισυνάπτονται από τους χρήστες.



Παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, ρύθμιση αδιαφάνειας και διαγραφή δεδομένων.

Υποστηρίζει προεπισκοπήσεις αρχείων στις ακόλουθες μορφές:

- 3D δεδομένα: STL, OBJ, PLY
- 2D εικόνες: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Αρχεία βίντεο: MKV, MP4, AVI, WMV

Δέντρο δεδομένων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα για το περιστατικό στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, να προσαρμόσετε τη διαφάνεια και να διαγράψετε δεδομένα από το δέντρο δεδομένων.



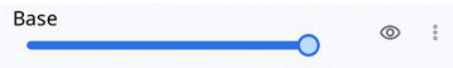
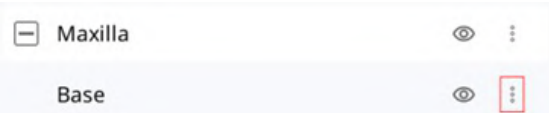
	Εμφάνιση/ Απόκρυψη	Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα δεδομένα.
	Αδιαφάνεια	Το ρυθμιστικό εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα δεδομένα στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των εμφανιζόμενων δεδομένων μετακινώντας το ρυθμιστικό. 
	Περισσότερα	Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα, εμφανίζονται πρόσθετες διαθέσιμες λειτουργίες.  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων αλλά εμφάνιση μόνο των αντίστοιχων δεδομένων. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των δεδομένων. • Αντιγραφή: Αντιγράψτε τα δεδομένα και προσθέστε τα στην ομάδα συνημμένων. • Εξαγωγή: Εξαγωγή των επιλεγμένων αρχείων. • Μετονομασία: Αλλαγή ονομασίας των δεδομένων. • Διαγραφή: Διαγραφή των δεδομένων.

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε μετονομασία δεδομένων όταν είστε συνδεδεμένοι.

Εργαλεία ελέγχου μοντέλου

3D έλεγχος μοντέλου

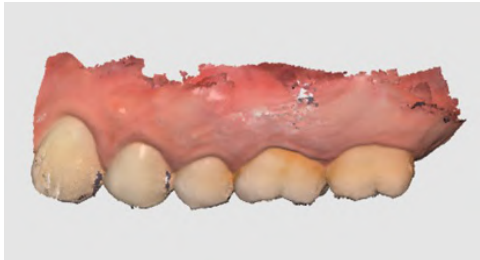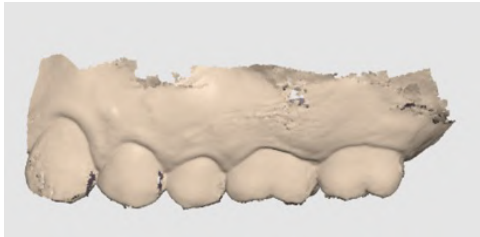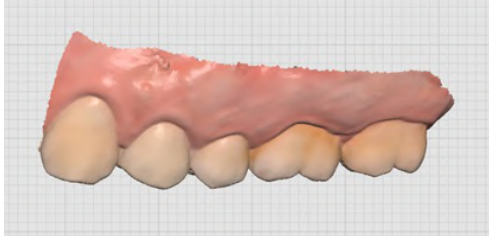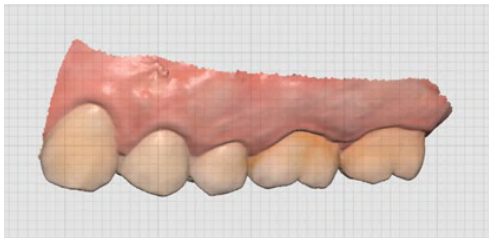	Μετακίνηση		Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή		Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση		Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής		Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίας εμφάνισης μοντέλου	Υφή ενεργοποιημένη	Εμφάνιση δεδομένων με πραγματικά χρώματα υφής. 
		Υφή απενεργοποιημένη	Εμφάνιση δεδομένων με ένα μόνο χρώμα. 
	Ρυθμίσεις πλέγματος (mm)	Πλέγμα ενεργοποιημένο	Εμφάνιση του πλέγματος στο παρασκήνιο. 
		Επικάλυμμα ενεργοποιημένο	Επικαλύψτε το μοντέλο με το πλέγμα. 
		Πλέγμα απενεργοποιημένο	Απόκρυψη του πλέγματος.

Έλεγχος 2D εικόνας


< >	Επόμενη/Προηγούμενη εικόνα	Μετακίνηση μεταξύ εικόνων.
	Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την εικόνα.
 	Λήψη/Επικόλληση παραθύρου	Μπορείτε να αποσπάσετε το παράθυρο της εικόνας και να το προσαρμόσετε στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου. Όταν το παράθυρο αποκατασταθεί στην αρχική του θέση, επιστρέφει στο προεπιλεγμένο του μέγεθος.

Εργαλεία λειτουργιών

Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις


Κάντε λήψη της τρέχουσας οθόνης ως 2D εικόνα, κάντε σχεδιασμό ή προσθέστε σημειώσεις.


Μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως αρχείο με τις σημειώσεις σας και να το στείλετε ως αναφορά.

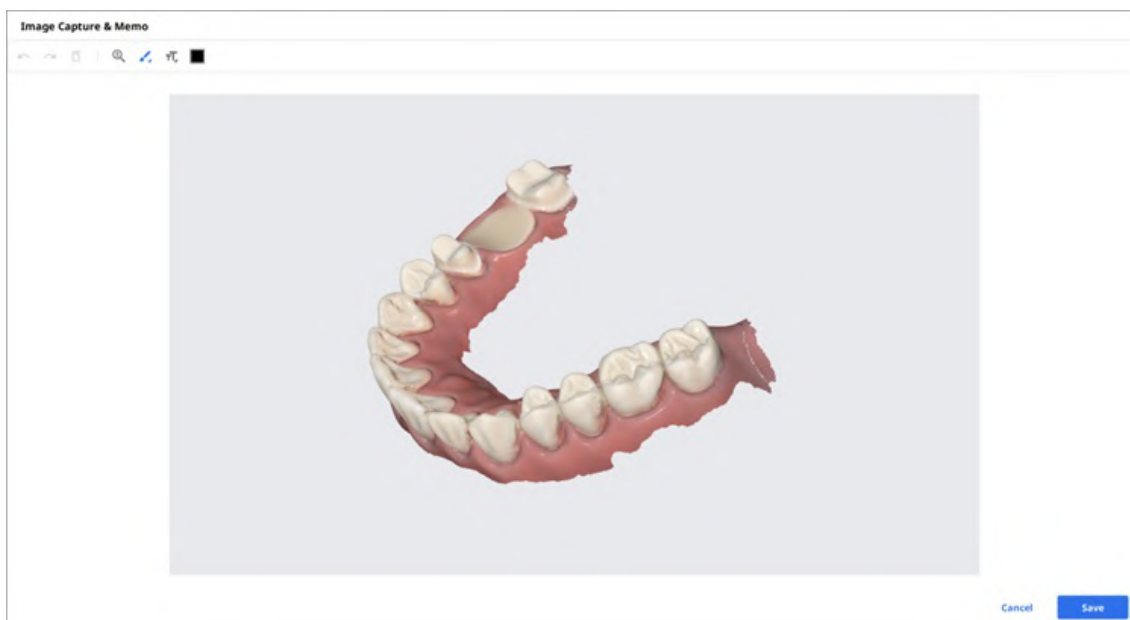

Ορθοδοντική προβολή

Κάντε λήψη των εικόνων στην τρέχουσα κατεύθυνση προβολής και πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά από την τρέχουσα κατεύθυνση προβολής.

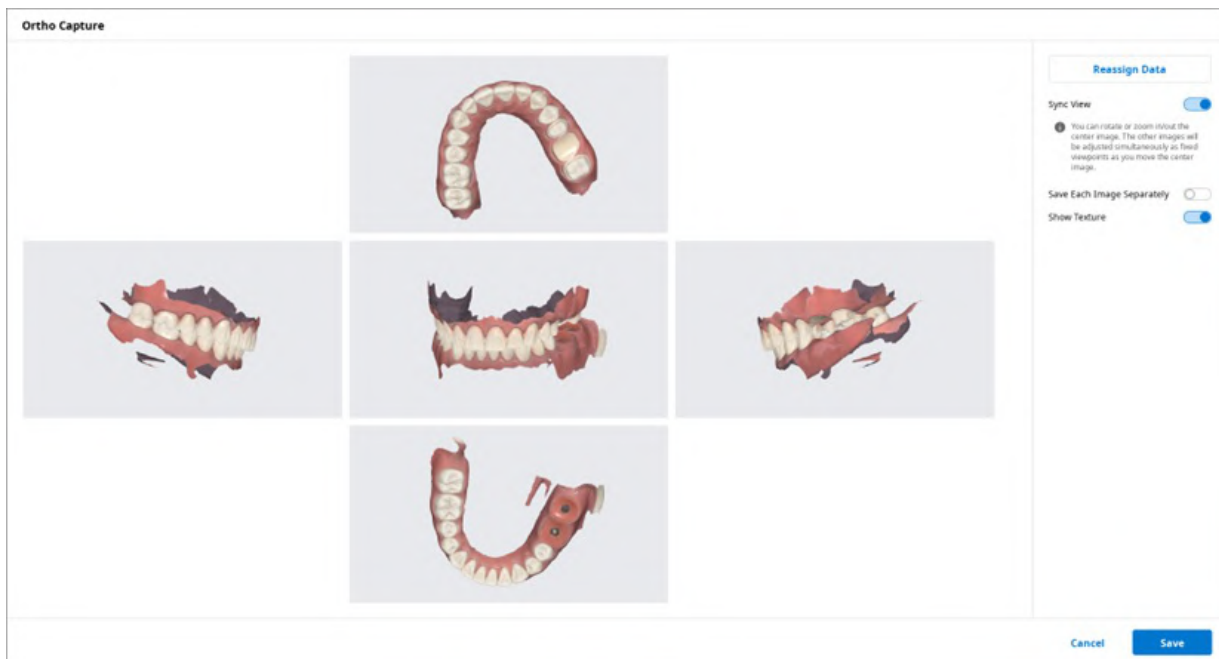

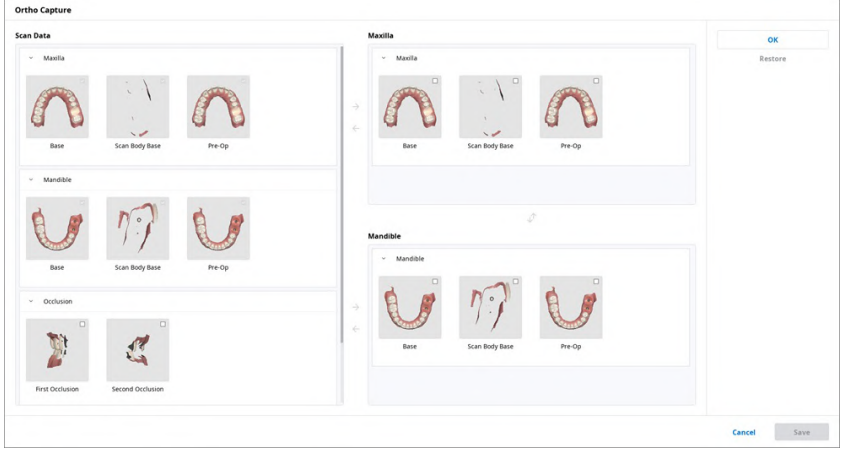Προβολή συγχρονισμού	Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση της κεντρικής εικόνας. Οι άλλες εικόνες θα προσαρμοστούν ταυτόχρονα ως σταθερές οπτικές γωνίες καθώς μετακινείτε την κεντρική εικόνα. Όταν είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να μετακινήσετε, να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση όλων των εικόνων ξεχωριστά.
Αποθήκευση κάθε εικόνας ξεχωριστά	Αποθηκεύστε κάθε εικόνα σε υψηλή ανάλυση.
Εμφάνιση υψής	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την υψή για το μοντέλο.
Εκ νέου εκχώρηση δεδομένων	Αλλάξτε τα δεδομένα για την άνω γνάθο/γνάθο με τη λειτουργία Εκ νέου εκχώρησης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αλλαγμένα δεδομένα για δημιουργία και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες αποτελεσμάτων της Ορθοδοντικής προβολής.  • Δεδομένα σάρωσης: Τα δεδομένα σάρωσης για το περιστατικό εμφανίζονται όλα. • Άνω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την άνω γνάθο. • Κάτω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την κάτω γνάθο.


Γέμισμα κενών

Γεμίστε τα κενά στα 3D δεδομένα πλέγματος.



Περικοπή


Η Περικοπή παρέχει διάφορα εργαλεία για την επεξεργασία δεδομένων.

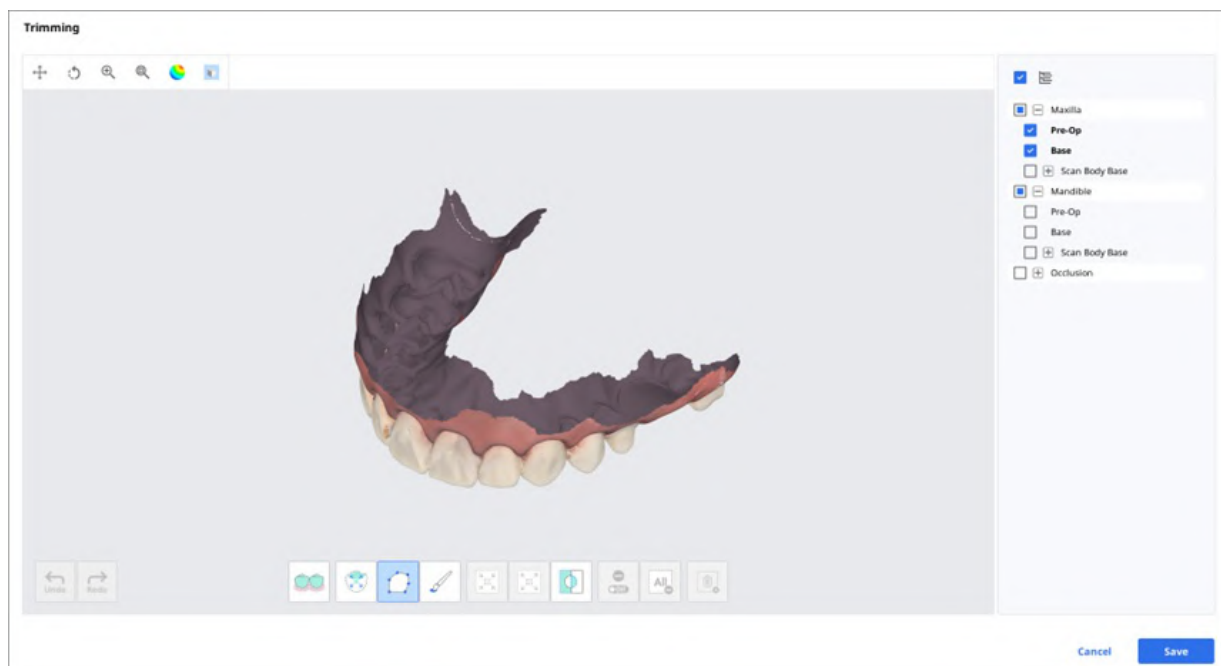

Τα επιλεγμένα 3D δεδομένα πλέγματος μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Επιλογή		Έξυπνη επιλογή δοντιών	Επιλέγει αυτόματα όλα τα δόντια του τόξου αφαιρώντας τα μέρη των ούλων. Σημείωση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τα δεδομένα σάρωσης που αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας το Medit Scan for Clinics με ενεργοποιημένη την επιλογή «Χρήση GPU».
		Έξυπνη επιλογή ενός δοντιού	Επιλέξτε αυτόματα την περιοχή ενός μόνο δοντιού με ένα κλικ. Μπορείτε να κάνετε κλικ ή σύρσιμο πάνω στο δόντι.
		Επιλογή πολυγραμμής	Επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη.
		Επιλογή βούρτσας	Επιλέξτε όλες τις οντότητες σε μια ελεύθερα σχεδιασμένη διαδρομή στην οθόνη. Θα επιλεγεί μόνο η μπροστινή όψη. Η βούρτσα διατίθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη.
Προσαρμογή επιλεγμένης περιοχής		Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής	Μειώνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Επέκταση επιλεγμένης περιοχής	Επεκτείνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής	Αντιστρέψτε την επιλογή.
Αποεπιλογή		Επιλογή/Αποεπιλογή	Όταν είναι ενεργοποιημένο, αποεπιλέξτε την περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
		Εκκαθάριση όλων των επιλογών	Διαγράφει όλες τις επιλεγμένες περιοχές.
		Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής	Διαγράψτε τα δεδομένα από την επιλεγμένη περιοχή.


1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε με τα εργαλεία επιλογής της περιοχής.

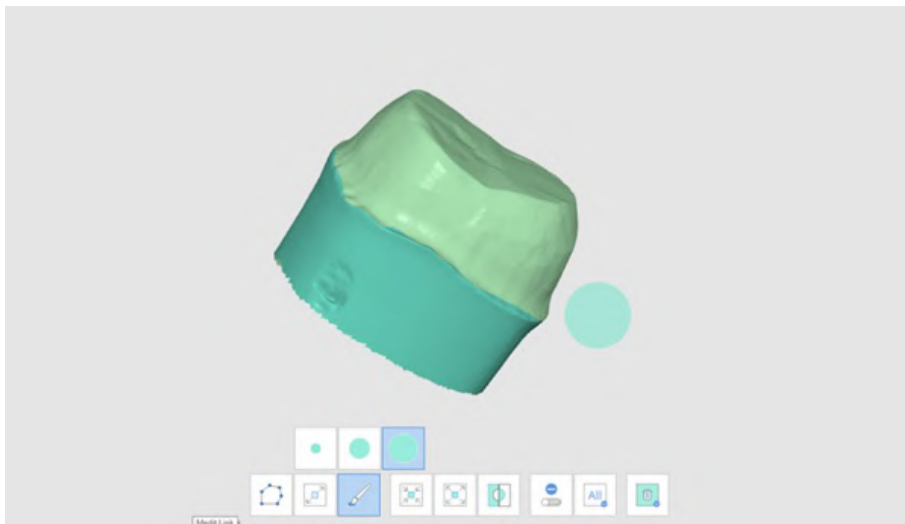


Σημείωση

Το εργαλείο πολυγραμμικής περικοπής επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη, ενώ το εργαλείο περικοπής βούρτσας επιλέγει μόνο τα δεδομένα της μπροστινής όψης.


2. Μπορείτε να αντιστρέψετε, να συρρικνώσετε, ή να επεκτείνετε την επιλογή με τα ακόλουθα τρία εργαλεία.
 - ο Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής

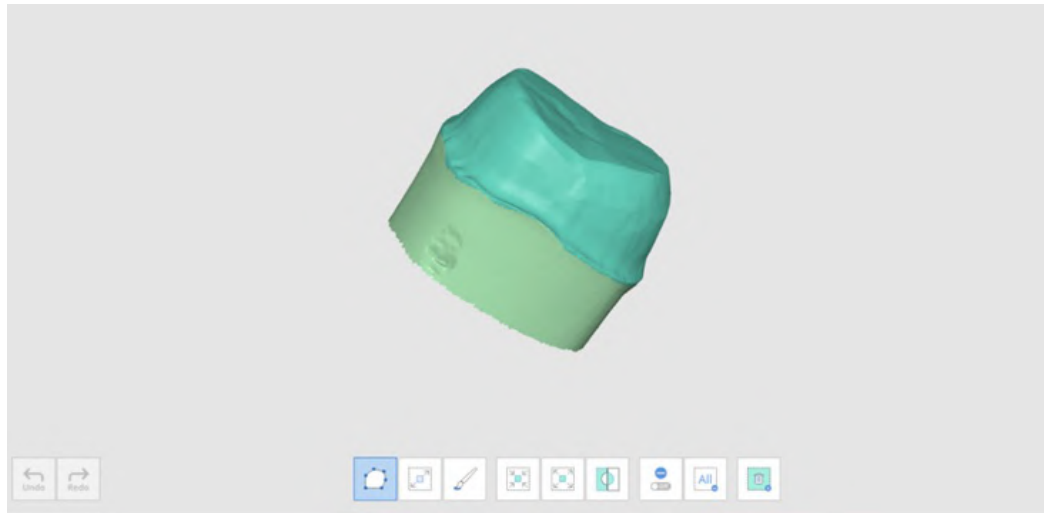

- Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής

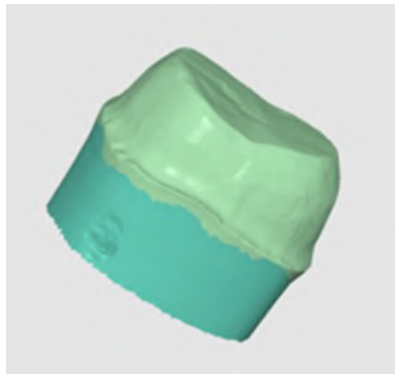


- Επέκταση επιλεγμένης περιοχής

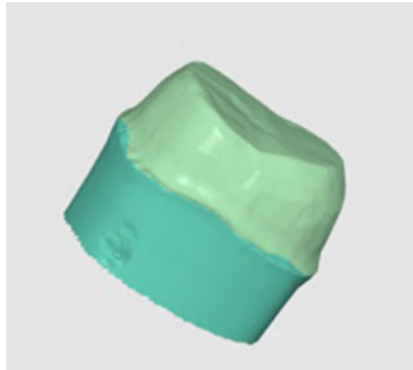







3. Μπορείτε να αποεπιλέξετε τις επιλεγμένες περιοχές με το εργαλείο Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής.

Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης

Βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης της σύγκλεισης. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα στόχου και να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση της σύγκλεισης.

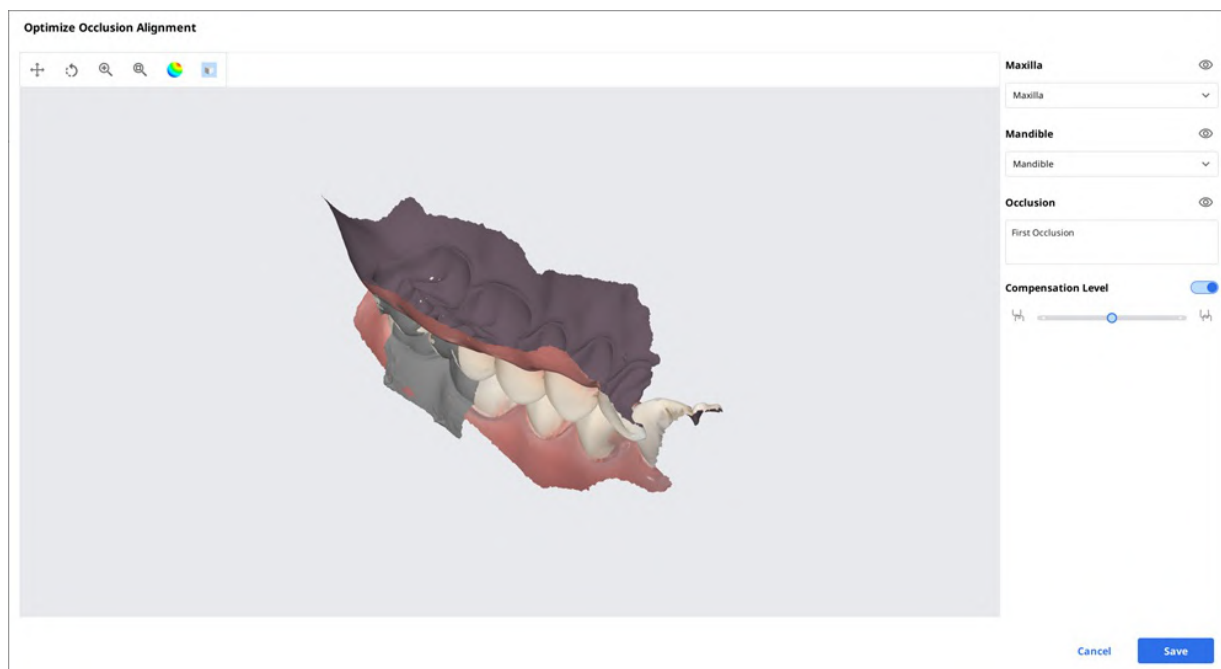


Επίπεδο αντιστάθμισης

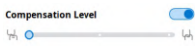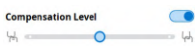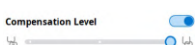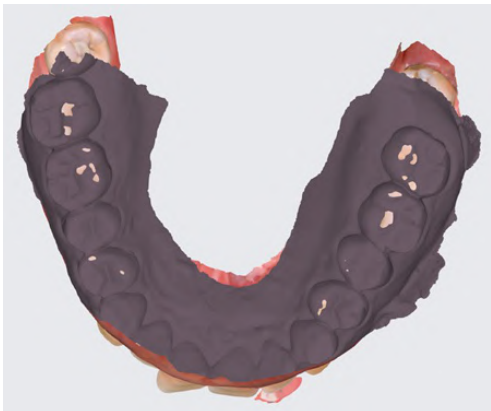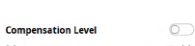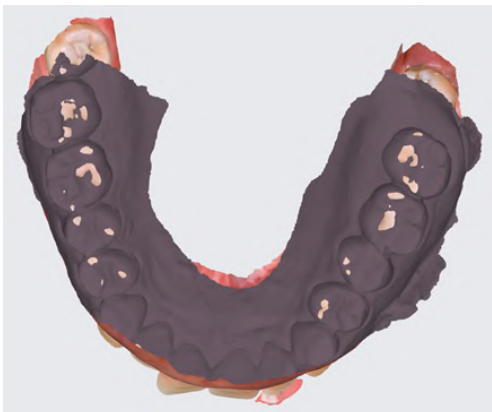Χαμηλό	Compensation Level 	
Μεσαίο	Compensation Level 	
Υψηλό	Compensation Level 	
Απενεργοποίηση	Compensation Level 	

Κίνηση της κάτω γνάθου

Μπορείτε να αναπαράγετε τις κινήσεις της κάτω γνάθου που έχουν καταγραφεί στο Medit Scan for Clinics για να δείτε τις δυναμικές συγκλεισιακές επαφές μεταξύ της άνω και της κάτω οδοντοστοιχίας.

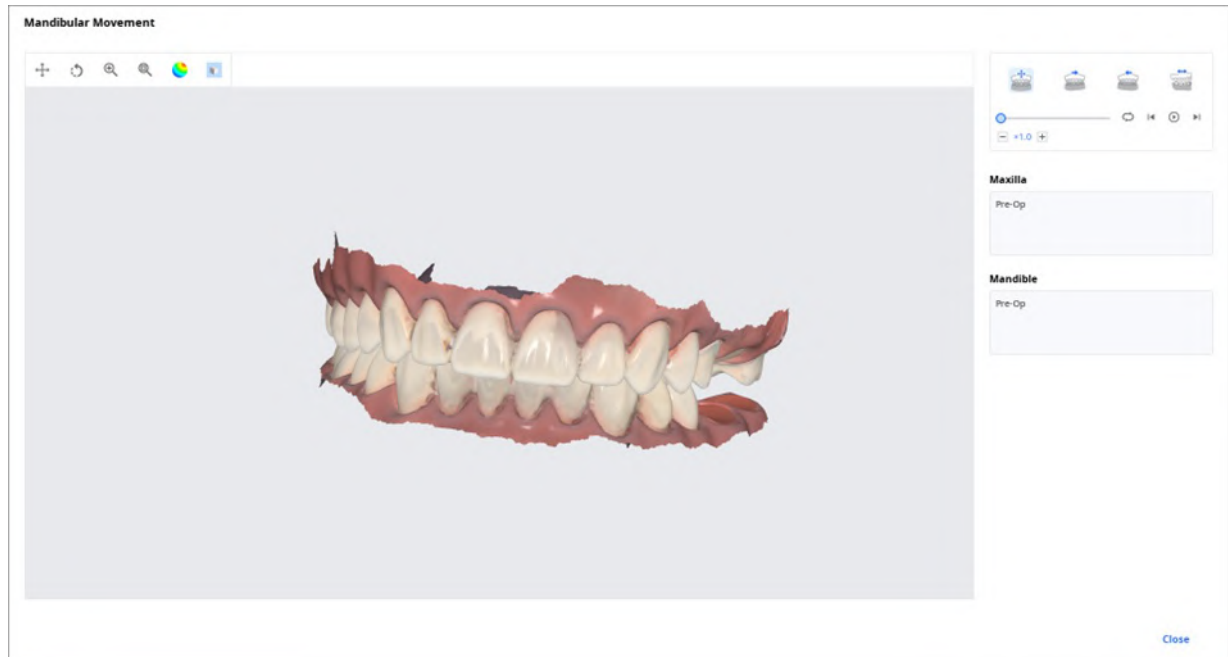

	Ελεύθερη κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της ελεύθερης κίνησης της κάτω γνάθου.
	Αριστερή πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα αριστερά.
	Δεξιά πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα δεξιά.
	Εμπρόσθια κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα εμπρός.

Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να λάβετε πολλαπλά αποτελέσματα δεδομένων σύγκλεισης από την εφαρμογή Σάρωσης της Medit.

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω του «Προγράμματος προβολής αρχείων».

Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα


Όταν ο χρήστης λαμβάνει πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από το Medit Scan for Clinics, το Medit Link παρέχει την επιλογή επιλογής αποτελέσματος.

Η λίστα των αποτελεσμάτων παρατίθεται ονομαστικά και μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Το επιλεγμένο μοντέλο θα εμφανίζεται στο «Δέντρο δεδομένων» και στην «Περιοχή εμφάνισης μοντέλου».



Μπορείτε να συρρικνώσετε τη λίστα και να αλλάξετε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τα εικονίδια με τα βέλη.

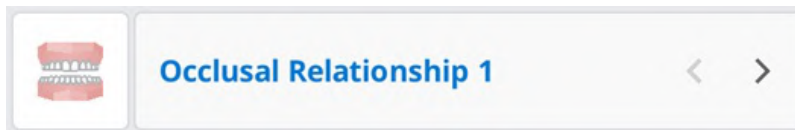

Επιλογές προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τις Επιλογές προβολής για να προσαρμόσετε τις διατάξεις της λίστας περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Φίλτρα κατάστασης

Εμφάνιση ή απόκρυψη κάθε φίλτρου που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του περιστατικού. Τα κρυφά φίλτρα κατάστασης δεν εμφανίζονται στην οθόνη στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε το περιστατικό που χρειάζεστε με τα φίλτρα κατάστασης.

- Μπορείτε να κάνετε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να προβάλετε για να εμφανίσετε περιστατικά μόνο σε αυτήν την κατάσταση.
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές φιλτραρίσματος:

Box	Φίλτρα κατάστασης
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Στοιχεία πίνακα

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στη λίστα περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων πίνακα ή να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης του πίνακα στην προβολή λίστας για βέλτιστη βελτιστοποίηση για το περιβάλλον χρήστη.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία πίνακα:

Box	Στοιχεία πίνακα
Patient	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Φύλο / Αρ. περιστατικών / Ημερομ. εγγραφής / Ημερομ. γέννησης
Case Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. γέννησης / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ.
In Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ. / Όνομα κλινικής
Work Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα κλινικής / Ημερομ. παραγγ.

Τύπος προβολής

Αλλάξτε τον τύπο προβολής μεταξύ της Προβολής συλλογής και της προβολής λίστας στο Case Box.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές τύπου προβολής:

Box	Επιλογές τύπου προβολής
Patient	Προβολή λίστας
Case Box	Προβολή λίστας / Προβολή συλλογής
Order Box	Προβολή λίστας
In Box	Προβολή λίστας
Work Box	Προβολή λίστας

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε μια επιλογή ομαδοποίησης για να ταξινομήσετε και να αναδιατάξετε τα περιστατικά στη λίστα με βάση την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ομαδοποίησης:

Box	Επιλογές ομαδοποίησης
Case Box	Κανένα / Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ.
Order Box	Κανένα / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
In Box	Κανένα / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
Work Box	Κανένα / Ζητ. ημερ. παράδ.

Σημείωση

Οι επιλογές ομαδοποίησης δεν είναι διαθέσιμες στα Patient, Case Talk και Trash Box.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης για να αλλάξετε τη σειρά των περιστατικών στη λίστα σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ταξινόμησης:

Box	Ομαδοποίηση	Επιλογές ταξινόμησης
Patient	-	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Ημερομ. γέννησης / Ημερομ. εγγραφής / Αρ. περιστατικών
Case Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
	Όνομα ασθενή	Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
In Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα κλινικής
Work Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομ. τελ. τροπ. / Όνομα κλινικής


Σημείωση

Οι επιλογές ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμες στα Case Talk και Trash Box.

Φιλτράρισμα και αναζήτηση

Φιλτράρισμα κατά ασθενή

Κάντε φιλτράρισμα και προβολή περιστατικών με βάση το όνομα του ασθενούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα φιλτράροντας μόνο τους ασθενείς στους οποίους πρόκειται να εργαστείτε.

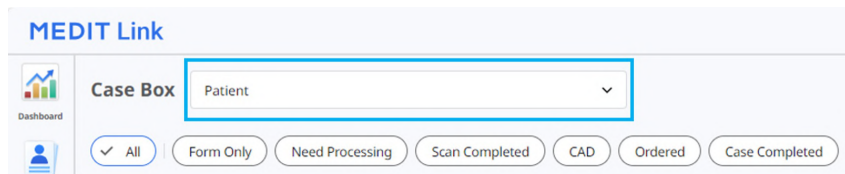


MEDIT Link

Case Box Patient

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενή.

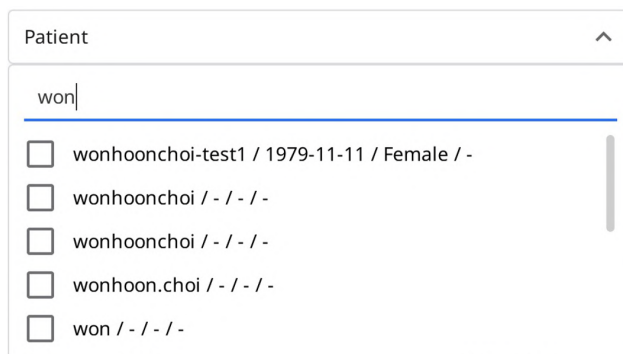


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Επιλέξτε τους ασθενείς μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης παρακάτω.

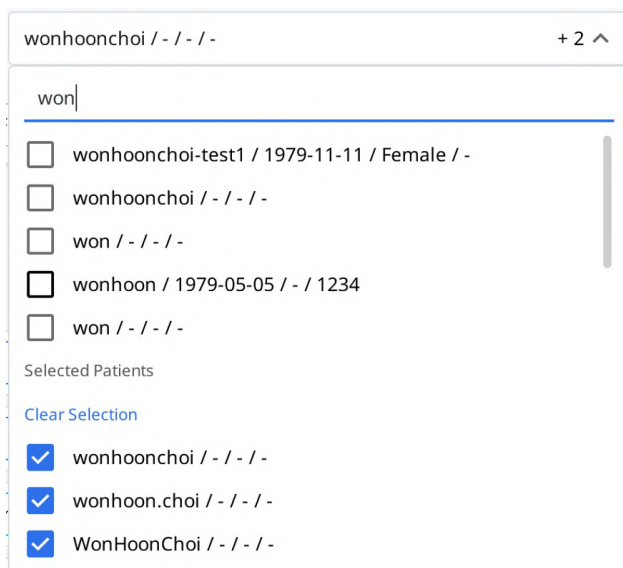

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. μόνο τα περιστατικά των επιλεγμένων ασθενών εμφανίζονται στη λίστα.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 08:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 08:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 08:14	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 02:05	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 03:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 04:41	2023-02-09 08:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 08:13	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 11:27	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 07:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 09:26	2023-02-09 09:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 08:50	2023-02-09 08:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 05:30	2022-10-11 05:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 10:28			

Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία

Φιλτράρισμα και εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά εντός της καθορισμένης διάρκειας.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.




2. Επιλέξτε τη διάρκεια από τη λίστα.

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία χθες.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.
- Τον προηγούμενο μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε.

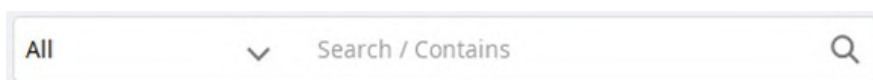

Τα ακόλουθα Κριτήρια αναζήτησης είναι διαθέσιμα για κάθε box:

Patient	Όλα, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς
Case Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς, Πληροφορίες φόρμας, Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, ID Παραγγελίας
In Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Work Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Πληροφορίες Φόρμας, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Case Talk	Όνομα Case Talk (Περιλαμβάνει), Όνομα ασθενούς (Ισούται)
Trash Box (Κλινική)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, Διαγράφηκε από
Trash Box (Εργαστήριο)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, Διαγράφηκε από

Μπορείτε να επιλέξετε τα Κριτήρια αναζήτησης και να διαλέξετε μεταξύ της λογικής του Περιλαμβάνει και του Ισούται.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού

Δημιουργία περιστατικών

Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

The screenshot shows a web form titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a small icon of three vertical bars and a magnifying glass to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Information icon**: A small circle with an 'i' inside.
- Text**: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field.
- Text**: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Text**: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Link**: "Terms & Conditions" in blue text.
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan" at the bottom right.

2. Εισάγετε βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα του ασθενούς και το όνομα του περιστατικού.
 - Εάν εισάγετε ένα όνομα που δεν βρίσκεται στη λίστα ασθενών, θα προστεθεί ένας νέος ασθενής.
 - Εάν εισάγετε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα ασθενών, μπορείτε να το επιλέξετε από τη λίστα.
 - Εάν καταχωρείτε ένα περιστατικό για έναν υπάρχοντα ασθενή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λίστα ασθενών για να επιλέξετε έναν υπάρχοντα ασθενή.



- Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα ασθενών, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν νέο ασθενή ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ενός υπάρχοντος ασθενούς.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
4. Κάντε κλικ στο «Καταχώρηση και σάρωση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του περιστατικού και προχωρήστε στη σάρωση.
 - **Καταχώριση** : Θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια σελίδα. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την καταχώριση πολλαπλών περιστατικών.
 - **Καταχώρηση και σάρωση**: Μεταβείτε στην καρτέλα Φόρμα για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες φόρμας για το περιστατικό.

Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Εισάγετε ή επιλέξτε το όνομα της κλινικής.
3. Εισάγετε το όνομα του περιστατικού και το όνομα του ασθενούς. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
4. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.
5. Μετά την καταχώριση του περιστατικού, θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική σελίδα.

Επεξεργασία περιστατικών

Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» για να αλλάξετε το όνομα του ασθενούς. Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία. Αντίθετα, μπορείτε να βρείτε ένα όνομα ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς από τη λίστα.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		


Close

Select

3. Ελέγξτε το όνομα του ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον.
4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε το κουμπί «Νέος ασθενής» .
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις καταχωρημένες πληροφορίες για τον ασθενή.
6. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

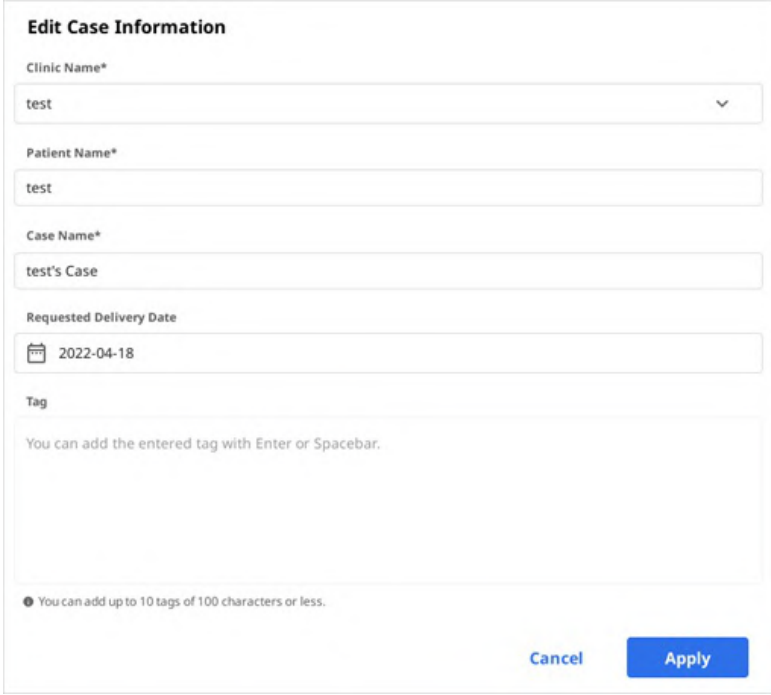

The form is titled "Edit Case Information". It contains several input fields: "Clinic Name*" with a dropdown menu showing "test", "Patient Name*" with a text input showing "test", "Case Name*" with a text input showing "test's Case", and "Requested Delivery Date" with a date picker showing "2022-04-18". There is also a "Tag" section with a text area and a note: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." At the bottom, there is a "Cancel" button and an "Apply" button.

2. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των περιστατικών που ελήφθησαν μέσω της παραγγελίας στο In Box.


Κλωνοποίηση περιστατικών

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Θα σας γίνει ερώτηση για το τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να κλωνοποιήσετε στο νέο περιστατικό.

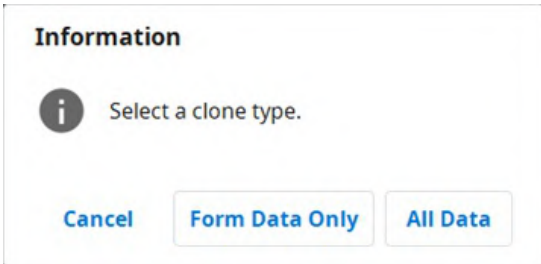

The dialog box is titled "Information". It contains an information icon (i) and the text "Select a clone type." Below this, there are three buttons: "Cancel", "Form Data Only", and "All Data".

3. Επιλέξτε εάν θα γίνει αντιγραφή μόνο για πληροφορίες φόρμας ή όλα τα δεδομένα.
4. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Αντιγράψτε όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσετε ένα νέο περιστατικό.

3. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».


Διαγραφή περιστατικού

Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή».



2. Κάντε κλικ στο «OK» για να διαγράψετε το περιστατικό.

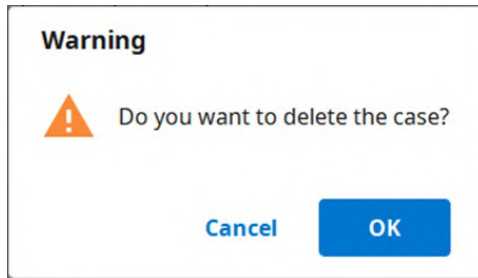

3. Τα διαγραμμένα περιστατικά μετακινούνται στο Trash Box και μπορούν να ανακτηθούν εάν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες φόρμας

Μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας με βάση το συνδεδεμένο πρόγραμμα και τον τύπο θεραπείας.

Οι πληροφορίες που εισάγετε θα χρησιμοποιηθούν ως βασικές πληροφορίες για την εργασία σε προγράμματα σάρωσης ή CAD και την παραγγελία.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε εάν πρόκειται να εισάγετε πληροφορίες θεραπείας κατά δόντια ή κατά γνάθο.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
3. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα


1. Επιλέξτε το πρόγραμμα σάρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης: Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
3. Οι μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Δόντια	O	O
Γνάθος	O	O
Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση	X	O
Πολλαπλή χύτευση	X	O

4. Επιλέξτε τους αριθμούς δοντιών, γνάθου ή καλουπιού για τη διαδικασία σάρωσης.
5. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.
6. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Σύνδεση δοντιών με γέφυρα

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά δόντια σε μια γέφυρα όταν γίνεται εφαρμογή του ίδιου υλικού σε πολλαπλά γειτονικά δόντια. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γέφυρας δίπλα στα επιλεγμένα δόντια για να τα συνδέσετε ή να τα αποσυνδέσετε.

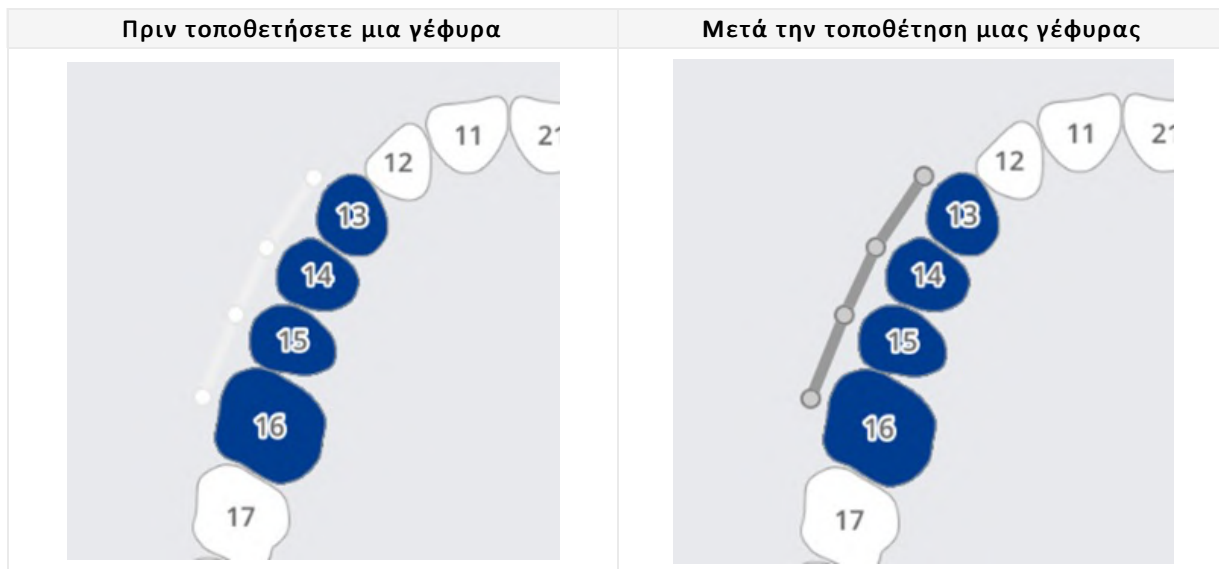

Ρύθμιση επιλογών σάρωσης

Ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο εργάζεστε, παρέχονται διάφορες επιλογές σάρωσης.

Οι επιλεγμένες επιλογές σάρωσης μεταβιβάζονται σε κάθε πρόγραμμα σάρωσης.

Medit Scan for Labs

Γενικές επιλογές

	Γειτονικό δόντι	Σημειώστε τα τροχισμένα και γειτονικά δόντια και μεταδώστε αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Ανταγωνιστής	Επισημαίνει αυτόματα τον ανταγωνιστή και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Αρθρωτήρας	Εμφάνιση επιλογών για την επιλογή του αρθρωτήρα στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Δείκτης κίνησης	Επιτρέψτε τη χρήση της στρατηγικής σάρωσης «Κίνηση γνάθου» στο πρόγραμμα σάρωσης.

Επιλογές κατά δόντια

	Αναλογικό	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση αναλογικών στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση προεπέμβασης	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση ενός προεπεμβατικού μοντέλου στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση διαγνωστικού κερώματος	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση κερωμάτων στο πρόγραμμα σάρωσης.

Προσθήκη στα αγαπημένα

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα ένα προϊόν καταχωρώντας το ως αγαπημένο.

Η διαχείριση της λίστας των καταχωρημένων αγαπημένων εφαρμόζεται ως πρότυπο και μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω των λειτουργιών εξαγωγής και εισαγωγής.

Προσθήκη στα αγαπημένα

1. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Τα Τύπος – Μέθοδος – Υλικό – Αποχρώσεις μπορούν να καταχωρηθούν ως αγαπημένα ακόμα και αν δεν έχουν επιλεγεί όλα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αστεριού».

4. Ένας συνδυασμός των επιλεγμένων παραμέτρων, εξαιρουμένου του αριθμού δοντιού, βρίσκεται στη λίστα αναζήτησης των αγαπημένων σας.

Διαχείριση αγαπημένων προτύπων

Μπορείτε να καταχωρήσετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε διαφορετικούς τύπους προτύπων.

Προσθήκη	Προσθέστε ένα νέο πρότυπο.
Μετονομασία	Μετονομάστε το τρέχον πρότυπο.
Διαγραφή	Διαγράψτε το τρέχον πρότυπο.
Εξαγωγή	Εξαγωγή του τρέχοντος προτύπου σε αρχείο.
Εισαγωγή	Εισάγετε ένα αρχείο προτύπου.

Εργασία σε Σάρωση/CAD

Διαδικασία σάρωσης

Με βάση τα στοιχεία που εισάγατε, προχωράτε στη σάρωση.

1. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες θεραπείας και επιλέξτε τις απαραίτητες επιλογές σάρωσης.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Διαδικασία CAD

Το Medit Link παρέχει την εφαρμογή ενσωμάτωσης DentalCAD για σύνδεση του Medit Link με το DentalCAD.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή DentalCAD Integration από το App Box.
2. Μεταβείτε στις λεπτομέρειες του περιστατικού και κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής DentalCAD Integration από τη Γρήγορη εκκίνηση.
3. Καθορίστε τη διαδρομή για την εφαρμογή DentalCAD που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.
4. Εισάγετε τις λεπτομέρειες περιστατικού για το σαρωμένο περιστατικό και κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής DentalCAD Integration, το οποίο θα εμφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου ώστε να δημιουργήσετε ένα αρχείο dentalProject.
5. Καταχωρίστε τις πληροφορίες φόρμας για το DentalCAD και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα» για να ανοίξετε το πρόγραμμα CAD.
6. Εάν εγκαταστήσετε την εφαρμογή DentalDB Integration, τα αποτελέσματα CAD θα παραδοθούν αυτόματα στην καθορισμένη διαδρομή αποθήκευσης στο exocad. (Μόνο λογαριασμοί εργαστηρίου)


Χρησιμοποιήστε πρόσθετες εφαρμογές

Πρόσθετο Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας διάφορες πρόσθετες εφαρμογές κάνοντας κλικ στα εικονίδια των εγκατεστημένων εφαρμογών στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων των εφαρμογών σύροντάς τα.



Διαχείριση εφαρμογής εκκίνησης

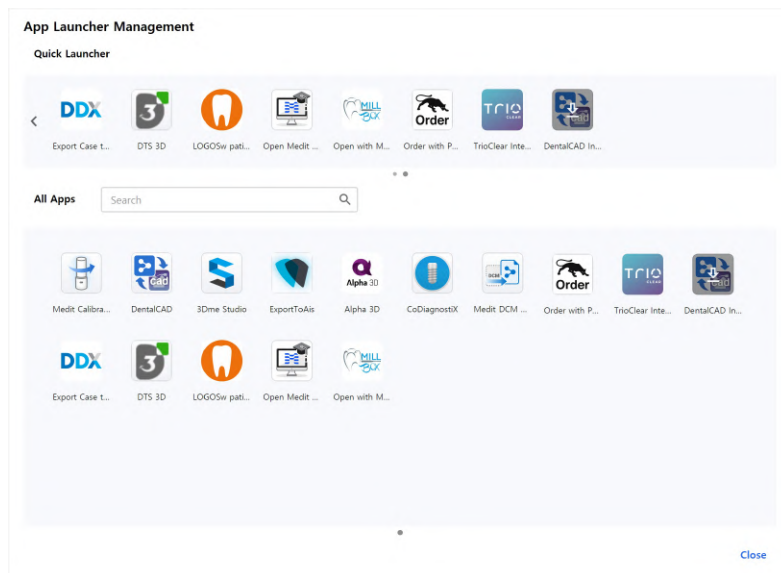

Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να ορίσετε ποιες εφαρμογές θα εμφανίζονται στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων των εφαρμογών σύροντάς τα ή μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους για να ομαδοποιήσετε παρόμοιες εφαρμογές μαζί ώστε να τις οργανώσετε.

Όλες οι εφαρμογές

Εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει. Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να προσθέσετε την εφαρμογή στη Γρήγορη εκκίνηση. Από το δεξί κλικ στο μενού περιβάλλοντος, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εκτελέσετε, να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης

Εκτός από την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων με συνεργάτες μέσω παραγγελιών, το Medit Link σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αρχεία αποτελεσμάτων σας στην επιθυμητή μορφή αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)


Close

Export

Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αποτελεσμάτων.
Όνομα φακέλου	Το σύστημα δημιουργεί έναν νέο φάκελο και αποθηκεύει όλα τα αρχεία αποτελεσμάτων σε αυτόν. Το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου ορίζεται από τον κανόνα ονομασίας. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του φακέλου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας από τις Ρυθμίσεις >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία φακέλου.
Όνομα αρχείου	Ορίστε το όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Ο κανόνας ονομασίας ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του αρχείου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας μέσω των Ρυθμίσεων >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία αρχείου
Τύπος	Επιλέξτε το πρόγραμμα σχεδίασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το Medit Link θα προσαρμόσει αυτόματα τα αρχεία σύμφωνα με την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε στη σχεδίαση χωρίς να χρειαστεί η πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση αρχείων	Συμπίεστε όλα τα αποτελέσματα σε ένα μόνο αρχείο.
Συνδυασμός μεμονωμένου πλέγματος	Συνδυάστε το αποτέλεσμα της άνω ή της κάτω γνάθου με το μεμονωμένο δόντι. Είναι χρήσιμο όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή πολλών αρχείων σε ένα πρόγραμμα.
Εξαγωγή όλων συγκλεισιακή σχέση	Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να εξάγετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα.
Αποθήκευση πληροφοριών περιστατικού ως αρχείο PDF	Αποθηκεύστε τις πληροφορίες του περιστατικού ως PDF με το αποτέλεσμα.

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων ενός ή πολλαπλών περιστατικών ταυτόχρονα με την επιλογή «Εξαγωγή» πάνω από τη λίστα περιστατικών στο Case Box και στο Work Box.

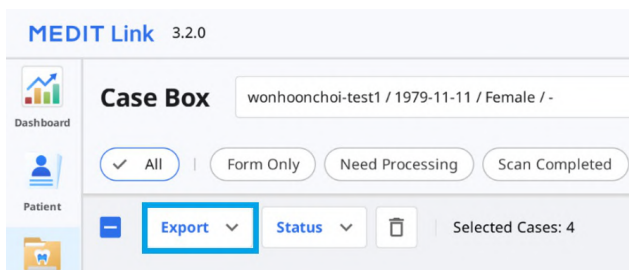

1. Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για τα οποία θέλετε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων από τη λίστα.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

▾ |
 ▾ |

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή» και επιλέξτε «Αρχεία αποτελεσμάτων».

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Ορίστε το φάκελο προορισμού, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit ▾

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Σημείωση

Τα πεδία «Όνομα φακέλου» και «Όνομα αρχείου» δεν είναι επεξεργάσιμα κατά την εξαγωγή αρχείων για πολλαπλά περιστατικά.


Το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου δημιουργούνται αυτόματα σύμφωνα με τους κανόνες που έχετε ορίσει στα «Κανόνες για ονομασία φακέλου» και «Κανόνες για ονομασία αρχείου» από τις Ρυθμίσεις > Επιλογές εξαγωγής.

5. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
6. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

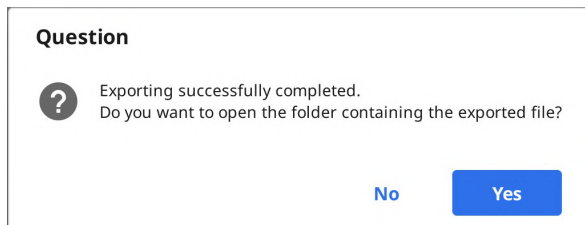

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για τα αρχεία αποτελεσμάτων της σάρωσης για ένα περιστατικό με το εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

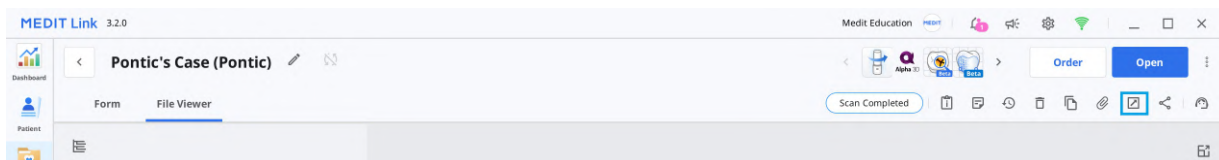

1. Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
2. Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.



4. Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. Στην καρτέλα «Λίστα αρχείων», μπορείτε να επιλέξετε τα απαιτούμενα αρχεία για το περιστατικό καταργώντας την επιλογή για όσα είναι περιττά.

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]
☒ [Icon] Maxilla
☒ Base
☒ [Icon] Mandible
☒ Base
☒ [Icon] Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion
☒ [Icon] Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible
☒ [Icon] Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export

6. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
7. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων


Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων από το επεκτεταμένο μενού στο πρόγραμμα προβολής αρχείων.

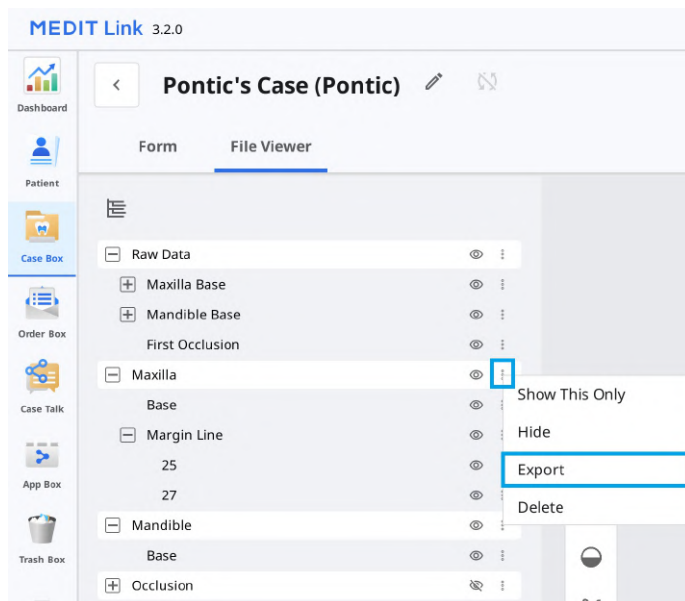

- Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
- Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες δίπλα στην ομάδα δεδομένων ή σε μια οντότητα στο δέντρο δεδομένων στην καρτέλα Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

...

- Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

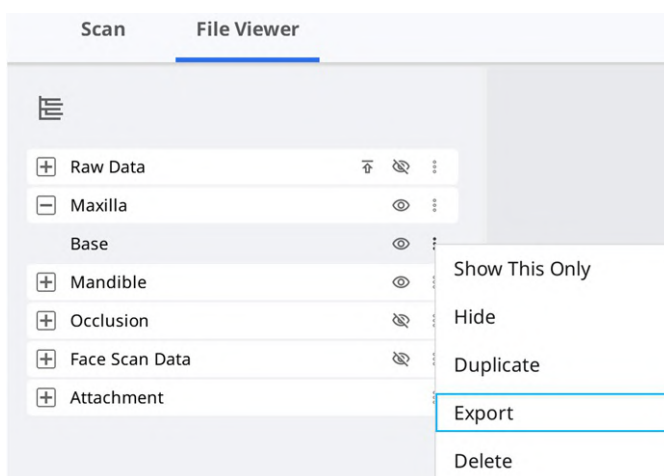

- Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Μπορείτε να δείτε ότι μόνο τα αρχεία που επιλέξατε στο δέντρο δεδομένων είναι επιλεγμένα στη λίστα αρχείων.

Export Files in This Case

Options File List

☒ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV


Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία εξαγωγής της λίστας περιστατικών σε μορφή CSV.

Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών με βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε εύκολα τα περιστατικά.

1. Μεταβείτε στο Case Box, Order Box, In Box ή Work Box.
2. Επιλέξτε τα περιστατικά που θέλετε να εξάγετε.

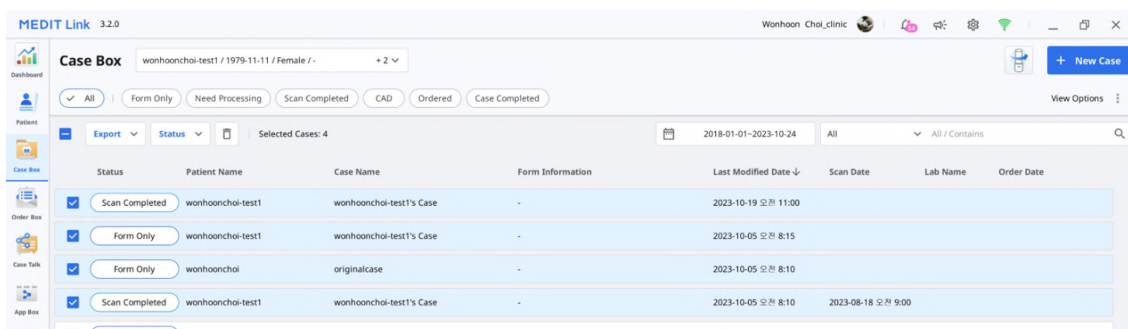

3. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή» και επιλέξτε «Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται)» ή «Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία)».

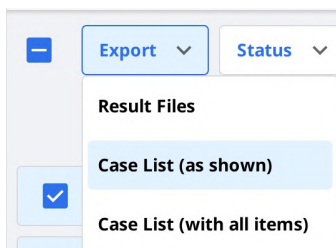

Σημείωση

Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με τα στοιχεία που εμφανίζονται την δεδομένη στιγμή στην οθόνη. Μεταβείτε στις Επιλογές Προβολής > Στοιχεία πίνακα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία όπως επιθυμείτε.

Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των Κατάσταση, Όνομα περιστατικού, Ημερομηνία γέννησης, Πληροφορίες φόρμας, Ημερομ. τελ. τροπ., Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας και Όνομα εργαστηρίου.

4. Καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη λίστα.
5. Η λίστα περιστατικών αποθηκεύεται ως αρχείο CSV.


Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου

Το Medit Scan for Clinics παρέχει μία λειτουργία δημιουργίας της γραμμής περιθωρίου, και το Medit Link μπορεί να μεταφέρει τη γραμμή περιθωρίου σε πρόγραμμα CAD.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα

Γενικά, το Medit Link μετατρέπει τη γραμμή του περιθωρίου σε χρώμα και εξαγει το αποτέλεσμα με την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο μαζί. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη γραμμή περιθωρίου στο cad τους αναφέροντας τις πληροφορίες χρώματος.

Παράδειγμα:

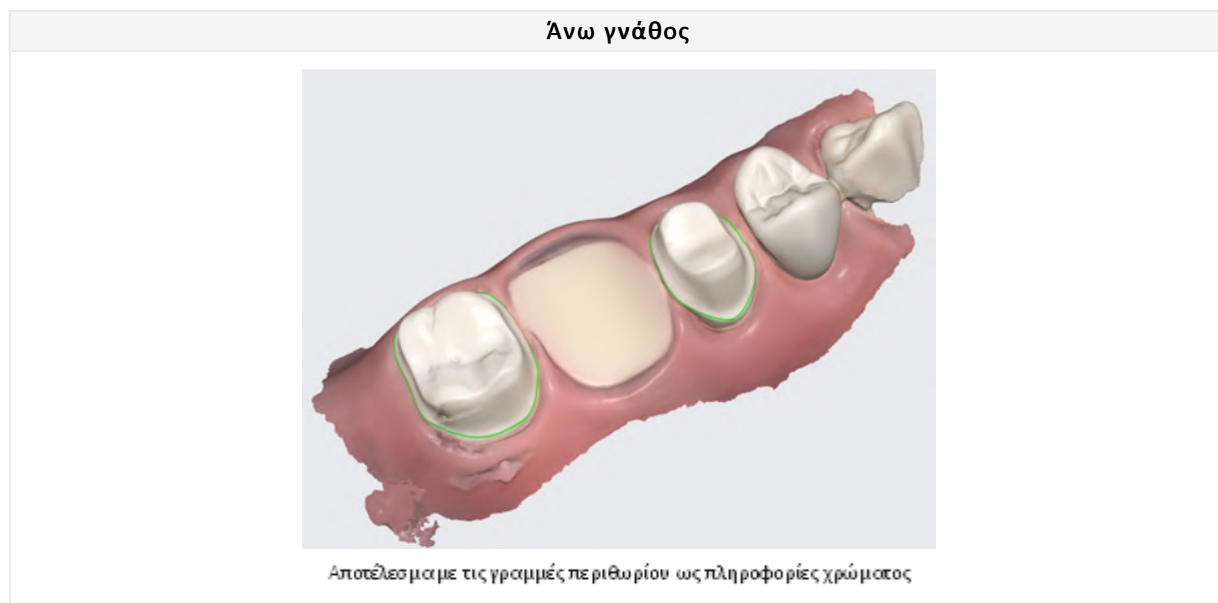

🔍 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για μορφές που περιλαμβάνουν πληροφορίες χρώματος όπως, meditMesh, OBJ και PLY. Η γραμμή περιθωρίου δεν μετατρέπεται σε STL.

🔍 Σημείωση



Ο τύπος > 3Shape δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο

Στην περίπτωση του Exocad, το Medit Link εξαγει τη γραμμή περιθωρίου στο «~margin.xyz» που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο exocad.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο στο exocad χωρίς πρόσθετη εργασία.

Παράδειγμα:

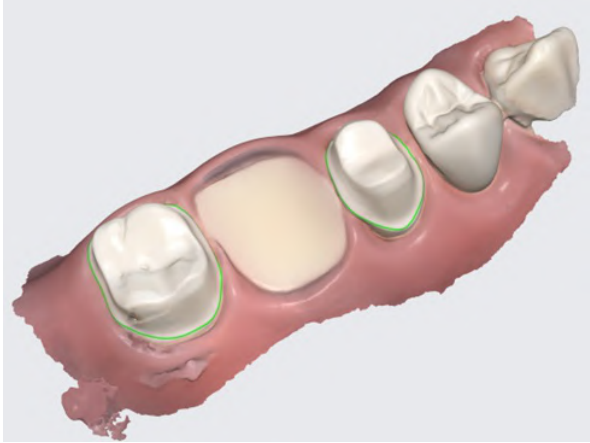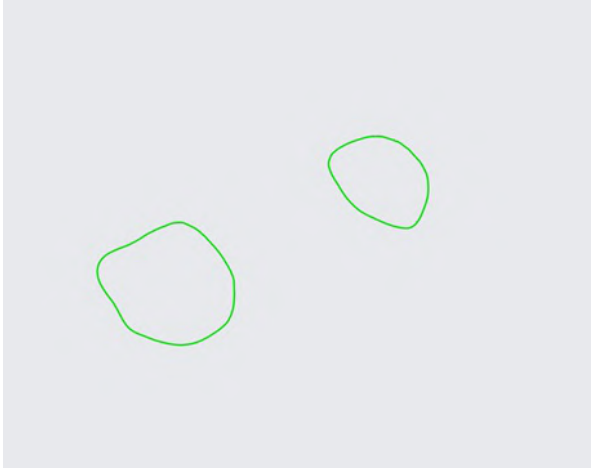Άνω γνάθος	Γραμμή περιθωρίου
 Αποτελέσματα τις γραμμές περιθωρίου ως πληροφορίες χρώματος	 Η γραμμή περιθωρίου εξήχθη ως μεμονωμένο αρχείο

Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link

Το Medit Link παρέχει μια λειτουργία λήψης.

Εάν θέλετε να λάβετε τα αρχεία αποτελεσμάτων χωρίς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Medit Link, μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων από την υπηρεσία ιστοσελίδας της Medit Link.

Σημείωση


Τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο Medit Cloud για λήψη των αρχείων από την ιστοσελίδα.

Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο μενού της υπηρεσίας ιστοσελίδας της Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί «Λήψη» επάνω δεξιά.

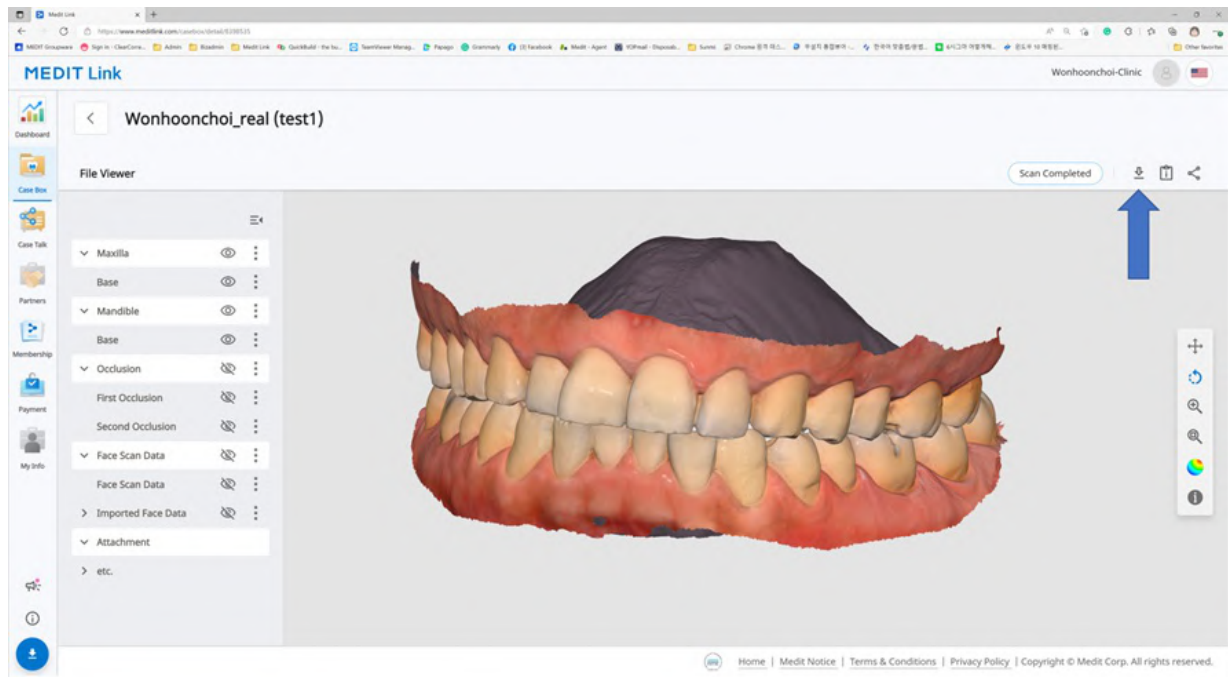


Web Viewer

Όταν κοινοποιείτε το περιστατικό χρησιμοποιώντας το Case Talk, μπορείτε να ορίσετε εάν θα επιτρέπεται η λήψη ή όχι.

Εάν επιλέξετε «Εκχώρηση άδειας λήψης» και κοινοποιήσετε το περιστατικό, όλοι οι χρήστες που συνδέονται στον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των αρχείων.

The screenshot shows the 'Share through Case Talk' dialog box. It has a title bar with a question mark icon. The main content area includes a 'Share with Anyone' dropdown menu, a 'Create a shared link and share it with anyone.' instruction, an 'Expiration Date' field set to '2022-04-27', and a 'PIN Code' section with a checkbox and an 'Enter PIN Code' input field. Below these are three checked options: 'Share the patient's name', 'Grant Download Permission Premium Feature' (highlighted with a blue box), and 'Allow comments'. Each option has a brief description. At the bottom, there is a 'Comment' text area and a '0/1024' character count. A disclaimer at the bottom states that by pressing the 'Get Link' button, the user agrees to the collection and sharing of personal information. The dialog box has 'Close' and 'Get Link' buttons at the bottom right.

Στο Web Viewer, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «Λήψη» επάνω δεξιά.

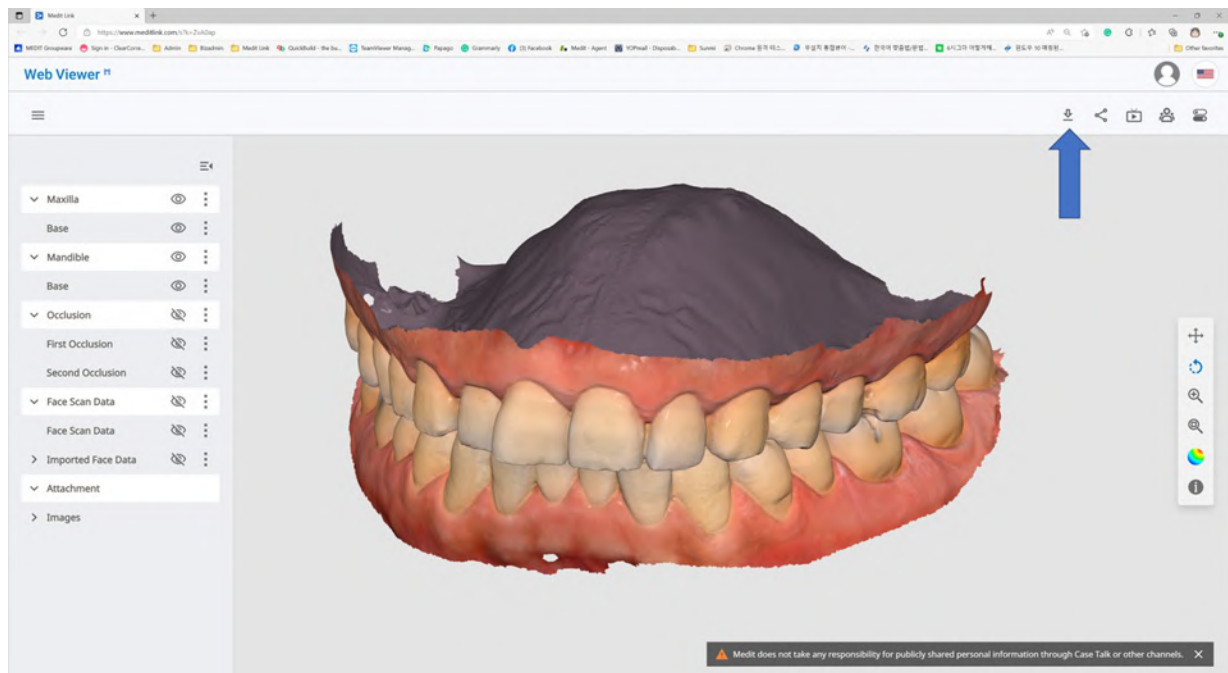

1. Κάντε κλικ στην «Λήψη».



2. Επιλέξτε τη μορφή πλέγματος από το παράθυρο διαλόγου λήψης.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ **PLY** ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK».

Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών

Μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε ένα περιστατικό με δεδομένα που λαμβάνονται από συνδεδεμένα προγράμματα και επισυνάπτονται από τον χρήστη.

Παραγγελία περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία για τους συνεργάτες σας στο Case Box.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγελία».
2. Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγγελία σας.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Επιλέξτε έναν συνεργάτη.
4. Ελέγξτε τις πληροφορίες προϊόντος από την καρτέλα της λίστας παραγγελιών.
 - ο Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κοινοποιήσετε το όνομα του ασθενούς.
5. Ελέγξτε τα αρχεία προς παραγγελία από την καρτέλα λίστας αρχείων.
6. Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
 - ο Η προεπιλεγμένη τιμή ορίζεται σε 7 ημέρες μετά την ημερομηνία παραγγελίας.
7. Μπορείτε να προσθέσετε σημείωση και ετικέτες στον συνεργάτη σας για να περιγράψετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
8. Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να στείλετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα επιλέγοντας «Παραγγελία όλων συγκλεισιακή σχέση».
9. Συνεχίστε με την παραγγελία σας.

Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)

- Αποδοχή παραγγελίας κατά τη παραλαβή.
- Οι αποδεκτές παραγγελίες θα προωθηθούν στο Work Box.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Confirm Order' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)

- Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία πριν την αποδεχτεί ο συνεργάτης σας.
- Τα περιστατικά που ακυρώθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and a 'Cancel' button highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Απορριπτές παραγγελίες (In Box)

- Μπορείτε να απορρίψετε μια παραγγελία που λάβατε.
- Τα περιστατικά που απορρίφθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Reject' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού που παραγγέilate από το Order Box στον λογαριασμό κλινικής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το περιστατικό που λάβατε από τον λογαριασμό εργαστηρίου του In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The top bar includes the logo, version, and user name 'Wonhoon Choi'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'test's Case - Clone / wh-clinic-ds...', contains fields for Order ID (13455074), Patient Name (***), Partner Name (wh-clinic-ds-3), Scanned Date (2023-08-04 09:15:58), Order Date (2023-10-26 04:38), Requested Delivery Date (2023-11-02 08:00), and Expected Delivery Date (2023-11-02 08:00). The right panel, titled 'Order List', shows a table of shipments.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Πληροφορίες παραγγελίας	Οι πληροφορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην παραγγελία είναι οι εξής: ID παραγγελίας/όνομα ασθενούς/όνομα λογαριασμού/ημερομηνία σάρωσης/ημερομηνία παραγγελίας/ημερομηνία παράδοσης/ημερομηνία λήξης παράδοσης/σημείωση. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του προϊόντος της παραγγελίας και τις πληροφορίες αποστολής.
Λίστα παραγγελιών	Η λίστα παραγγελιών εμφανίζει τις λεπτομέρειες του παραγγελθέντος προϊόντος.
Αποστολή	Εισάγετε/ελέγξετε τις πληροφορίες αποστολής.

Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)

Εισάγετε τις πληροφορίες αποστολής για τη ολοκληρωμένο περιστατικό και ξεκινήστε την αποστολή.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή.
2. Εισάγετε τα στοιχεία αποστολής και κάντε κλικ στην «Καταχώριση».

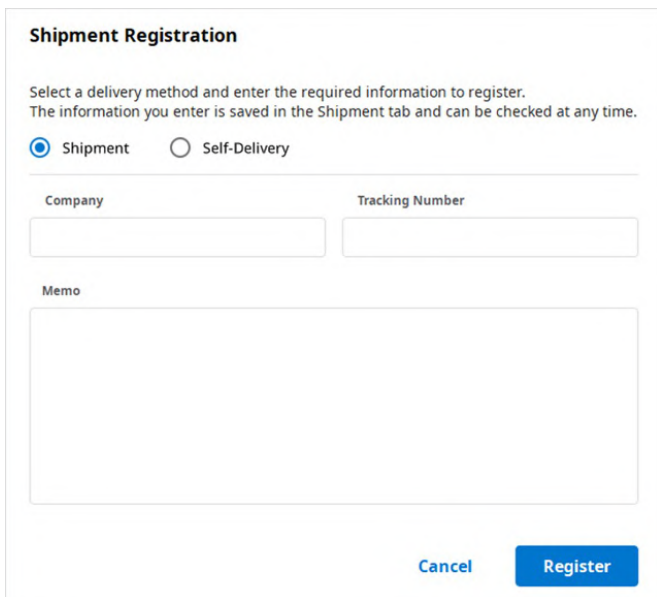

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Οι καταχωρημένες πληροφορίες αποστέλλονται στον συνεργάτη σας.

Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης

Μπορείτε να ορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης κατά την υποβολή μιας παραγγελίας και αυτές οι πληροφορίες θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Κατά την παραγγελία από το Case Box, μπορείτε να εισάγετε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης.

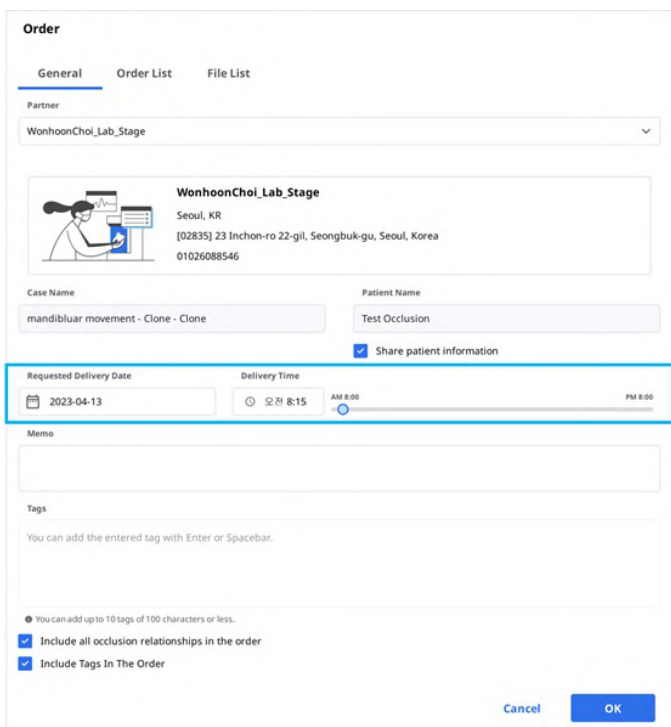

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας.

- Εισάγετε την ημερομηνία/ώρα που θέλετε να παραλάβετε τα προϊόντα και προχωρήστε στην παραγγελία.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εύκολα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

Ορισμός αναμενόμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός εργαστηρίου)

- Μπορείτε να εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης για το περιστατικό που παραγγέilate από το In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main window displays the 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic' order details. The 'Expected Delivery Date' field is highlighted with a blue box, showing '2022-10-01' and '10:30'. The 'Order List' table on the right shows three items: Implant Crown, Cementation Ty..., and Multi-Layered Zirconia, all with a price of 0. The 'Total' is KRW 0.

1. Ελέγξτε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης με τον συνεργάτη και προγραμματίστε εκ νέου χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επεξεργασία».



2. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη εάν είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν απαιτείται, μπορείτε επίσης να αφήσετε ένα σχόλιο.
3. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

The screenshot shows the date and time selection interface. It features a calendar for March 2022 with the 17th selected. Below the calendar is a 'Delivery Time' slider set to 11:45 AM. There is also a 'Comment' text area and 'Cancel' and 'Apply' buttons at the bottom.

4. Η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και το σημείωμα θα προωθηθούν μαζί με την παραγγελία.

- Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία και τις σημειώσεις στο Order Box.
- Μπορείτε να αλλάξετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και οι αλλαγές θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

5. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό του περιστατικού χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ιστορικό».



Ολοκλήρωση περιστατικού

Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)


Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, κάντε κλικ στο «Ολοκλήρωση» για να ολοκληρώσετε το περιστατικό.

Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών

Μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες στα δεξιά από το κουμπί «Άνοιγμα» ή «Επανάληψη σάρωσης».



Ολοκληρώστε την εργασία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο και επιλέγοντας «Done».

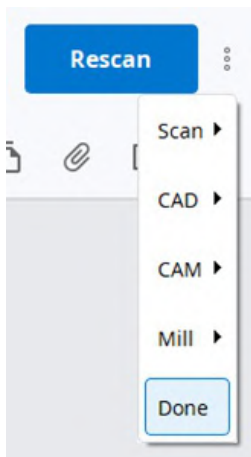

Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών

1. Μετάβαση στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για ολοκλήρωση.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
Form Only	test's Case	test	-
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown

3. Κάντε κλικ στο «Κατάσταση» και επιλέξτε «Done».

Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)

Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού από την πλευρά του εργαστηρίου, η κλινική θα πρέπει να το επιβεβαιώσει για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της παραγγελίας.

Η κλινική θα μπορέσει να βρει το κουμπί «Επιβεβαίωση παράδοσης» στο Order Box εάν το εργαστήριο ολοκληρώσει την εργασία του.

Κάνοντας κλικ σε αυτό, ολοκληρώνεται ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας και η κατάσταση του περιστατικού θα αλλάξει σε «Case Completed».

< test's Case - clone (test)

Order File Viewer

Confirm Delivery

Shipped

Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box

Για περιστατικά που δεν έχουν παραγγελθεί στο Εργαστήριο, μπορείτε να τα ολοκληρώσετε από το Case Box.

1. Μεταβείτε στο Case Box.
2. Επιλέξτε το περιστατικό που θέλετε να ολοκληρώσετε.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

Status	Case Name
☐ Ordered test	test's Case
☒ Scan Completed wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒ Scan Completed test test(1234)	G11598492310180503424
☒ Scan Completed test	test's Case
☒ Scan Completed test	test's Case


3. Κάντε κλικ στο «Κατάσταση» και επιλέξτε «Case Completed».

Επικοινωνία με χρήση ετικετών

Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες για το περιστατικό σας χρησιμοποιώντας ετικέτες και να κάνετε αποστολή στους συνεργάτες σας.

Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού

Μπορείτε να εισάγετε ετικέτες όταν δημιουργείτε ένα νέο περιστατικό ή επεξεργάζεστε πληροφορίες του περιστατικού.

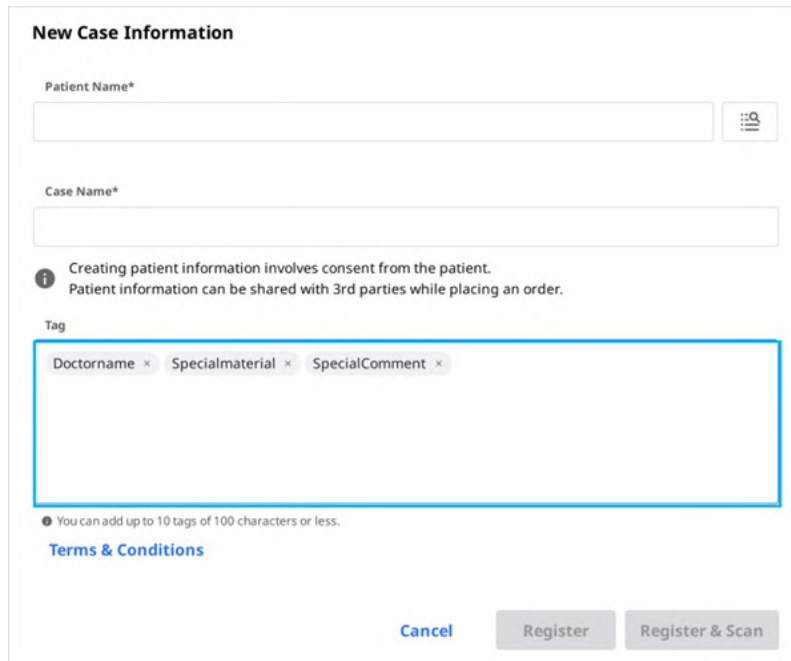

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε και να επιλέξετε ετικέτες που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

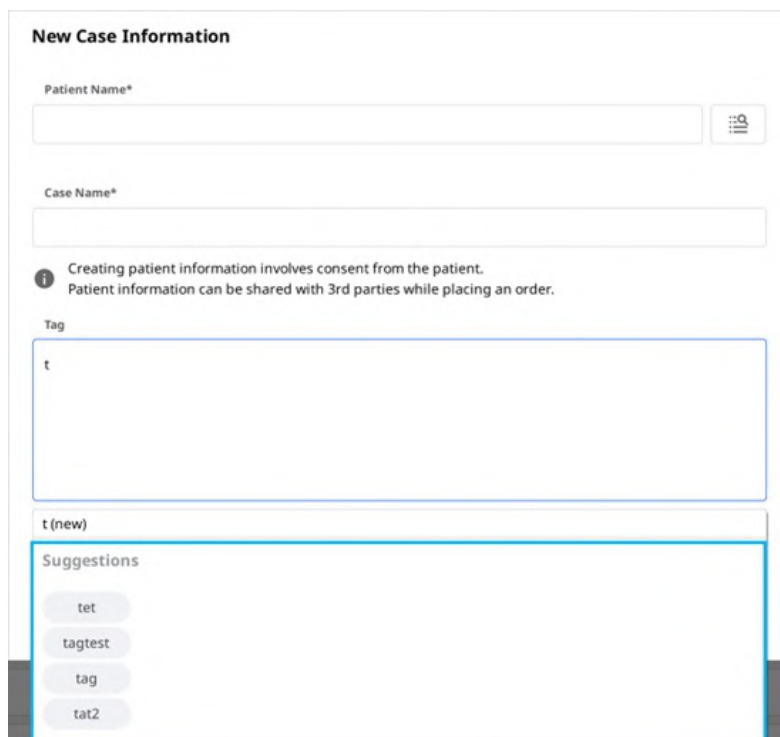

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet
tagtest
tag
tat2

Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε ετικέτες στο παράθυρο διαλόγου Παραγγελία κατά την παραγγελία.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...)

Form File Viewer

Scan Completed

Memo Edit

Tags
Dr_Name × Worker_Name ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Save