

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

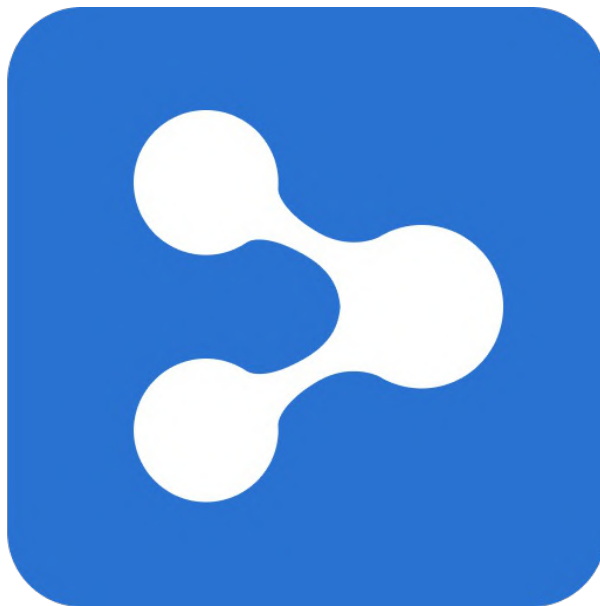


Table of Contents

Medit Link

はじめに	7
Medit Link	7
サービス概要	7
クラウドサービス	8
注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム	9

Medit Link > インストール

システム要件	10
Windows用のシステム要件	10
macOS用システム要件	10
Webサービス用システム要件	10
推奨ブラウザ	10
モバイル機器用最小要件	10
Windowsでのインストール	11
macOSでのインストール	14

Medit Link > 開始する

登録&サインイン	18
Medit Link Webサイト	18
登録	18
ログインおよびウェルカムページ	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Dashboardの概要	24
Medit Insights	24
Medit Insightsを購読する	25
Medit Insightsの購読を解除する	26
Patient	27
患者の検索	27
Case Box/Work Box	28
ケースフィルタリング	28
患者別フィルタリング	28
ステータス別フィルタリング	31
期間別フィルタリング	31
検索別フィルタリング	32
ケースの詳細	32
Order Box/In Box	34
注文詳細	34
Order Box/In Box中のタブ	34
Case Talk	35
Case Talkの作成	35
共有権限タイプと共有オプションの設定	36
Case Talk詳細	38
Webビューワー	39
注釈	40
コメント	41

リアルタイムでの画面共有	42
データツリー	42
データツリーコントロール	42
3D模型のコントロール	43
Partners	45
パートナーを検索する	45
マイ契約リスト	45
パートナーの招待	46
Membership	47
メンバーシップ	47
Medit Cloud Storage Plan	47
クラウドストレージ	49
サブスクリプション登録	49
サブスクリプションをキャンセルする	51
マイサブスクリプション	52
詳細	53
サブスクリプションの再登録	53
支払い方法の追加方法	54
支払い方法の変更方法	55
引き換え	55
詳細	56
引き換えコードの登録	56
引き換えコードの有効化	57
支払い情報	57
請求の詳細を確認	58
My Info	60
マイアカウント	60
マイ歯科医院／マイ技工所（管理者アカウントのみ）	60
マイ・スキャナー	61
その他のメニュー	63
お知らせ & 更新情報	63
関連Webサイト	63
Medit Linkアプリのダウンロード	64
 Medit Link > Medit Linkアプリ	
概要	65
下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。	65
タイトルバー	66
ユーザー情報	66
通知	66
通知 & 更新情報	67
設定	67
ネットワークステータス	68
設定	70
一般	70
ストレージ管理	71
期間の設定	72
ローカルストレージ	72
クラウドストレージ	72
連動プログラムを設定	73
エクスポートオプション	73
ケース変換ツール	75

ケースのエクスポート	76
ケースのインポート	77
プロキシオプション	79
弊社について	79
ユーザーガイド	80
メニュー	81
Dashboard	81
Patient	81
新規患者の追加	82
患者の削除	82
患者の結合	83
Case Box/Work Box	83
Case Box／Work Box中のタブ	84
Case Box／Work Box中のタブ	84
Order Box/In Box	85
Order Box/In Box中のタブ	86
Case Talk	86
App Box	87
すべて	87
Medit Apps	87
ダウンロード	88
Trash Box	88
ケース同期マネージャー	89
アップロード	89
ダウンロード	90
関連Webサイト	90
ファイルビューアー	92
データツリー	92
模型コントロールツール	92
3D模型のコントロール	93
2D画像コントロール	94
機能ツール	94
画像撮影とメモ	94
矯正撮影	95
穴の充填	96
トリミング	97
咬合アライメントの最適化	99
下顎運動	101
ファイルビューアーの複数の咬合データの管理	102
複数の結果の管理方法	102
表示オプション	103
ステータスフィルター	103
表示タイプ	104
グループ化	104
並び替え	104
フィルタリングと検索	106
患者別フィルタリング	106
日付別フィルタリング	107
詳細検索機能	108
Medit Link > ワークフロー	
ケースの作成／編集／複製／削除	109

ケースの作成	109
Case Box(歯科医院)でケースの作成	109
Work Box(技工所)でケースの作成	109
ケースの編集	110
Case Box(歯科医院)でケースの編集	110
Work Box(技工所)でケースの編集	111
ケースの複製	111
Case Box(歯科医院)でケースの複製	112
Work Box(技工所)でケースの複製	112
ケースの削除	112
ケースの削除(歯科医院および技工所)	112
フォーム情報	113
Case Boxのフォーム情報の登録	113
フォームタブの入力	113
Work Boxのフォーム情報の登録	113
フォームタブの入力	113
歯をブリッジにつなぐ	113
スキャンオプションの設定	114
Medit Scan for Labs	114
一般オプション	114
歯別のオプション	114
お気に入り追加	115
お気に入り追加	115
お気に入りテンプレートの管理	115
スキャン/CADでの作業	116
スキャン処理	116
CAD処理	116
アドインアプリを活用	116
クイックランチャーを追加	116
アプリランチャー管理	116
クイックランチャー	117
すべてのアプリ	117
結果ファイルの取得	118
スキャン結果ファイルのエクスポート	118
ケースリストから結果ファイルのエクスポート	119
ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート	121
データツリーから結果ファイルのエクスポート	123
CSVとしてケースリストをエクスポート	126
マージンラインのエクスポート	127
色としてマージンラインをエクスポート	127
ファイルとしてマージンラインをエクスポート	128
Medit Linkウェブからファイルをダウンロード	128
Case Box/Work Box	129
Web Viewer	129
ケースの注文/管理	132
ケースの注文	132
注文の確認(In Box)	133
注文のキャンセル(Order Box)	133
注文の拒否(In Box)	133
注文済みケースの確認	133
配送情報の入力(In Box)	134
納品日の管理	134

納品希望日の設定(歯科医院アカウント)	134
配送予定日を設定(技工所アカウント)	135
ケースの完了	136
完了(Work Box／In Box)	136
ケースの詳細からケースを完了する	136
ケースリストから複数のケースを完了する	137
完了(Case Box／Order Box)	137
Case Boxの注文のないケースの完了	137
タグを使用してやり取りをする	139
新規ケースの作成時にタグを追加	139
注文時にタグを追加	140
ケースの詳細でタグを確認	140

はじめに

Medit Link

Medit Linkは歯科医院と技工所の各ワークフローを最適化できるように、両者間のやり取りを円滑にするよう設計されているコラボレーションツールです。

各アカウントのタイプや権限に基づき、差別化された機能を提供しています。プログラムは口腔内および模型のスキャナーでのスキャン、ケースの注文、補綴物の設計・製作のワークフローを管理するためのユーザーが使いやすいユーザーインターフェースを提供しています。

Medit Linkは、ウェブサービスおよびコンピューターアプリケーションで構成されています。

サービス概要

		Web	アプリ
		- アカウントを登録・管理 - パートナーを検索・管理 - 共有可能なリンクを使用してWeb Viewer経由でケースを共有 - アプリから作成されたケースにアクセス - 注文を管理	- フォーム情報を入力 - スキャン - 注文を管理 - CADを使用してリンク - 患者管理
歯科 医院	管理 者	パートナーと歯科医院を検索・管理し、ケースを共有します。 - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	フォーム情報の入力、スキャン、発注、患者の管理。 - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	メン バー	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
技工 所	管理 者	パートナーと技工所を検索・管理し、ケースを共有。 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	フォーム情報の入力、スキャン、注文の管理。 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	メン バー	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

クラウドサービス

Medit Linkは、AWS (Amazon Web Services)を介してデータベースとファイルの自動アップロード/ダウンロードをサポートしています。

クラウドに保存されたデータは、歯科医院／技工所の複数のユーザーのコンピューターに自動的に同期されていますので、いつでもどのコンピューターからでも同じデータにアクセスできます。クラウドベースのバックアップとリカバリーですべてのデータを安全に維持します。予期せぬコンピュータの停止によるデータ喪失の場合でも、データを安全に保護できます。

クラウドサービスによりパートナー提携している歯科医院および技工所はメールしたり、手動でスキャン転送することなく、迅速にデータを共有できます。患者情報などすべてのデータは、安全に暗号化され保存・転送されます。MeditはHIPAAやGDPRのような医療関連法令や規制に準拠しています。

注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム

Medit Linkは注文システムを提供しています。

- Medit Linkを使用すると、歯科医と歯科技工所間での連携を構築でき、素早く簡単にデータを共有できます。
- 注文状況を確認および管理できます。

システム要件

🔍 注意

スキャナーを使用してスキャンソフトウェアを使用する場合には、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのシステム要件を参照してください。

Windows用のシステム要件

	ノートパソコン&デスクトップ
CPU	Intel Core i5 2.6GHz以降
RAM	16GB以上
グラフィック	NVIDIA GeForce GTX 769 (2GB) 以上／または同等のAMD動画カード
OS	Windows 10 64ビット以上 (32ビットでは使用不可)

macOS用システム要件

	Mac
プロセッサ	M1チップ (8コア、7コア GPU、16コアニューラルエンジン)
RAM	16GB以上
OS	Monterey 12以降

Webサービス用システム要件

推奨ブラウザ

	ブラウザ
PC	Chrome、Firefox、Safari、Edge (Chromium)
Android	Chrome、Firefox
macOS	Safari、Chrome、Firefox

モバイル機器用最小要件

	Android	iOS
デバイス	Galaxy S7以降	iPhone 7以降
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB以上	2GB以上
AP	Snapdragon 710より上	A10 Fusion


Windowsでのインストール

Medit Linkは、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのスキャン取得プログラムと一緒にパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_LinkSetup.exeを実行します。
2. インストールする言語を選択します。
3. Medit Linkをインストールするフォルダを選択します。ライセンスの利用規約を読み、同意し「インストール」をクリックしてください。



4. 次の手順に進む前に、スキャナーケーブルがPCに接続されていないことを確認してください。スキャナーがPCに接続されている場合には、インストールは継続できません。
5. プログラムは自動的にインストールされます。しばらく時間がかかる場合があります。インストールが完了するまでPCの電源を落としたり、コードを抜いたりしないでください。

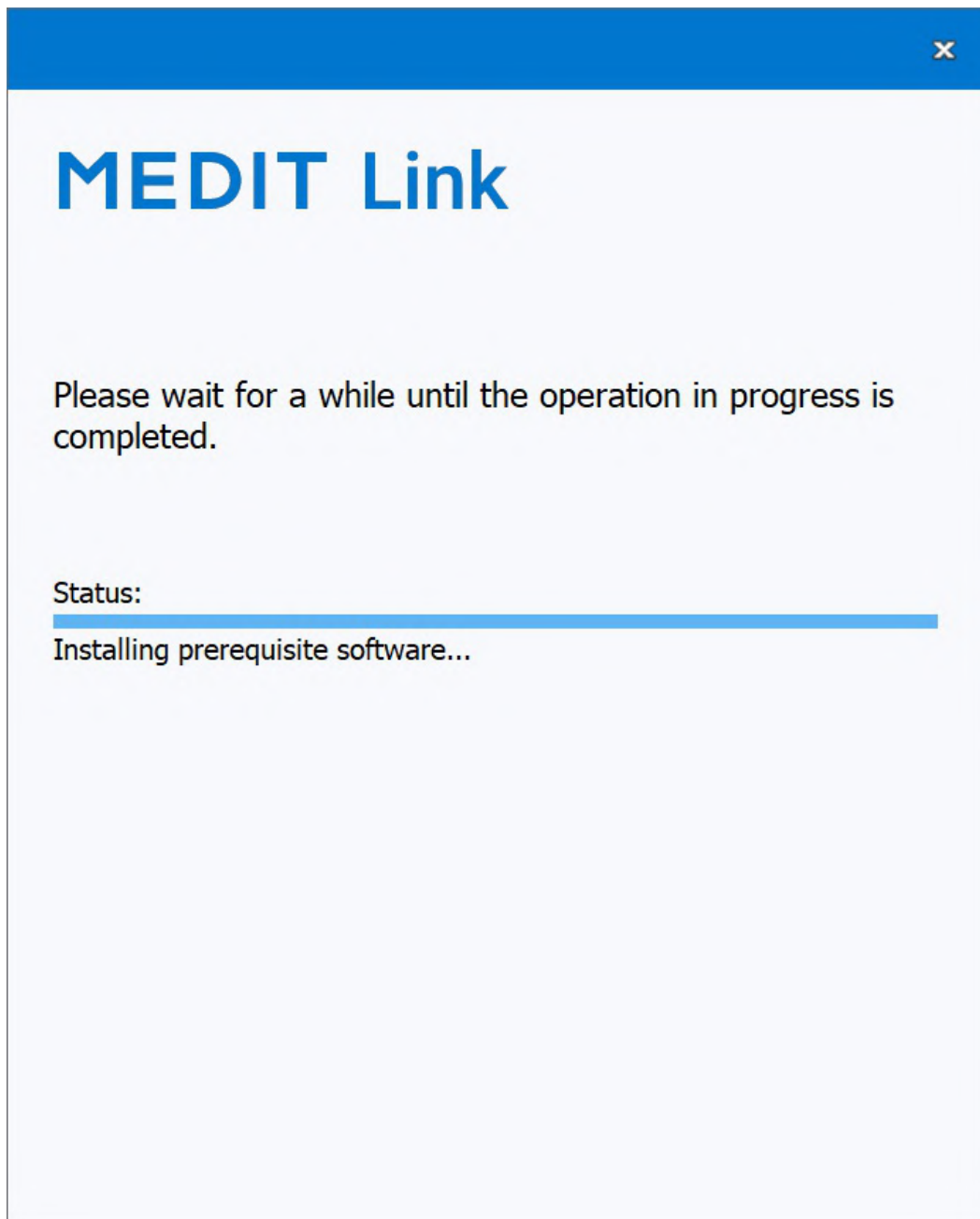

6. インストールが完了したらPCを再起動してください。スキャナーがない場合には、PCを再起動することなくそのまま継続できます。

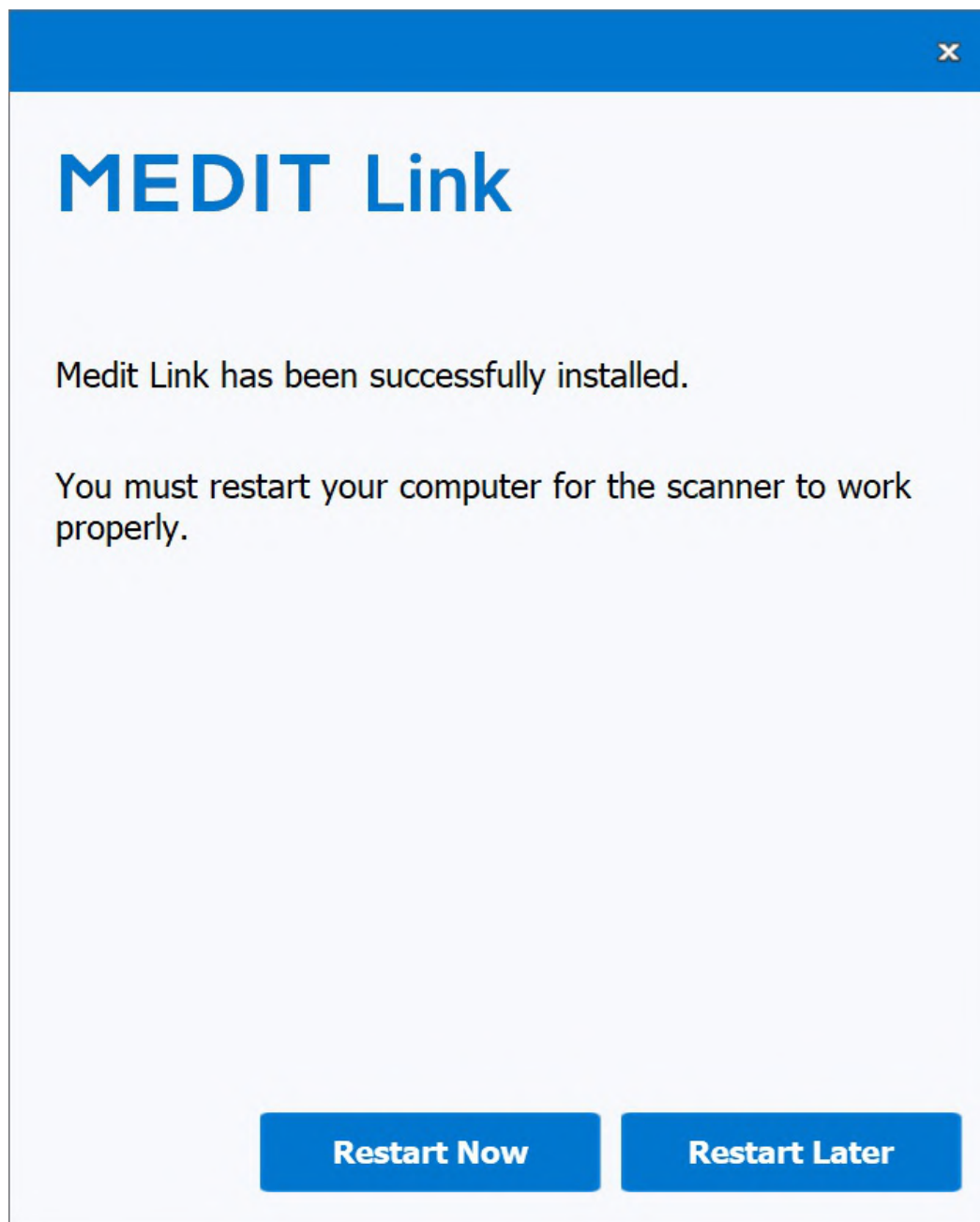


注意

インストール完了後にPCを再起動しない場合、スキャナーは正常に機能しない場合があります。


macOSでのインストール

Medit LinkはMedit Scan for Clinicsのパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_Link_x.x.x.pkgを実行し、「続ける」をクリックします。

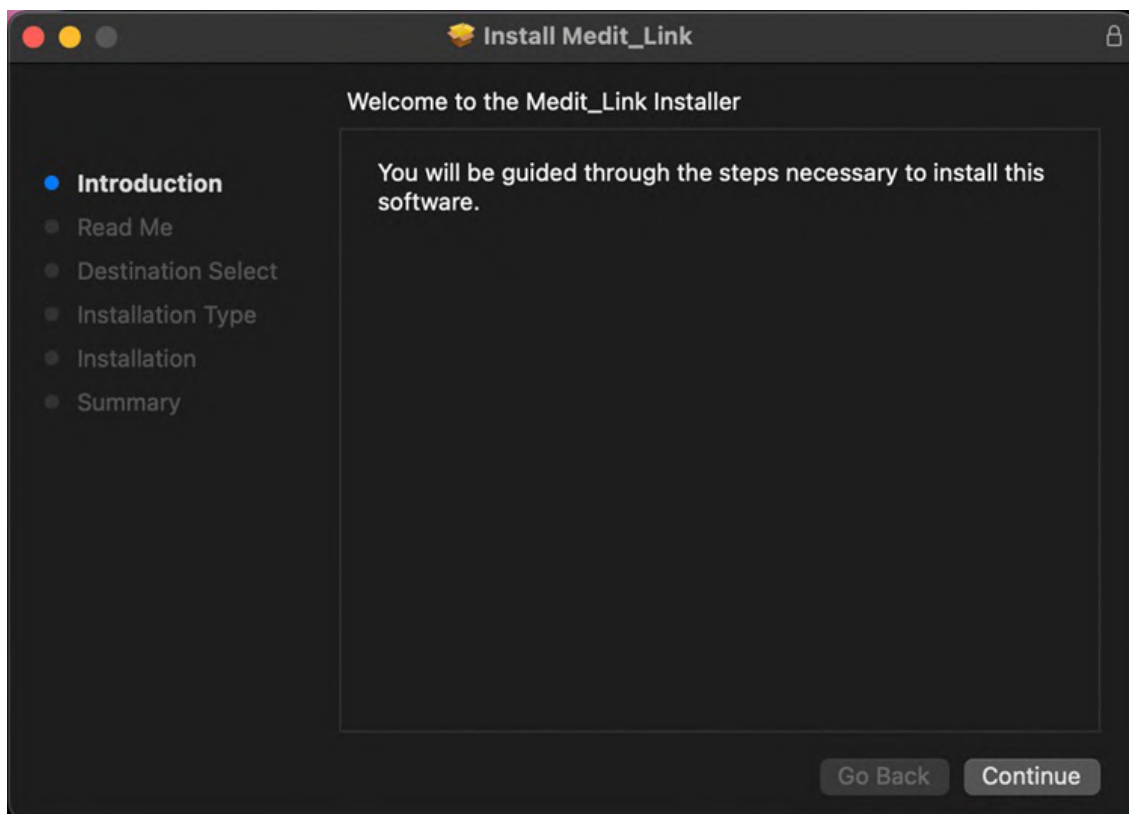


2. エンドユーザーライセンス契約を読み、「続ける」をクリックします。

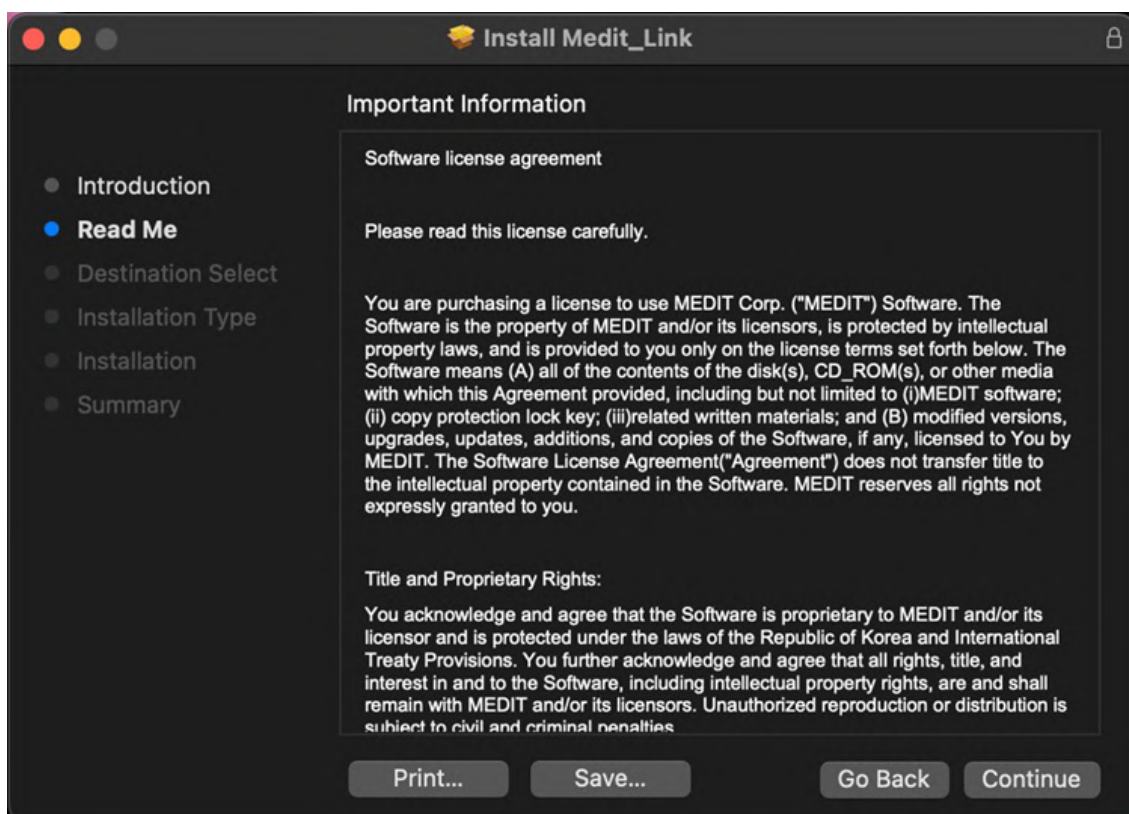

3. インストールするディスクを選択し、「続ける」をクリックします。

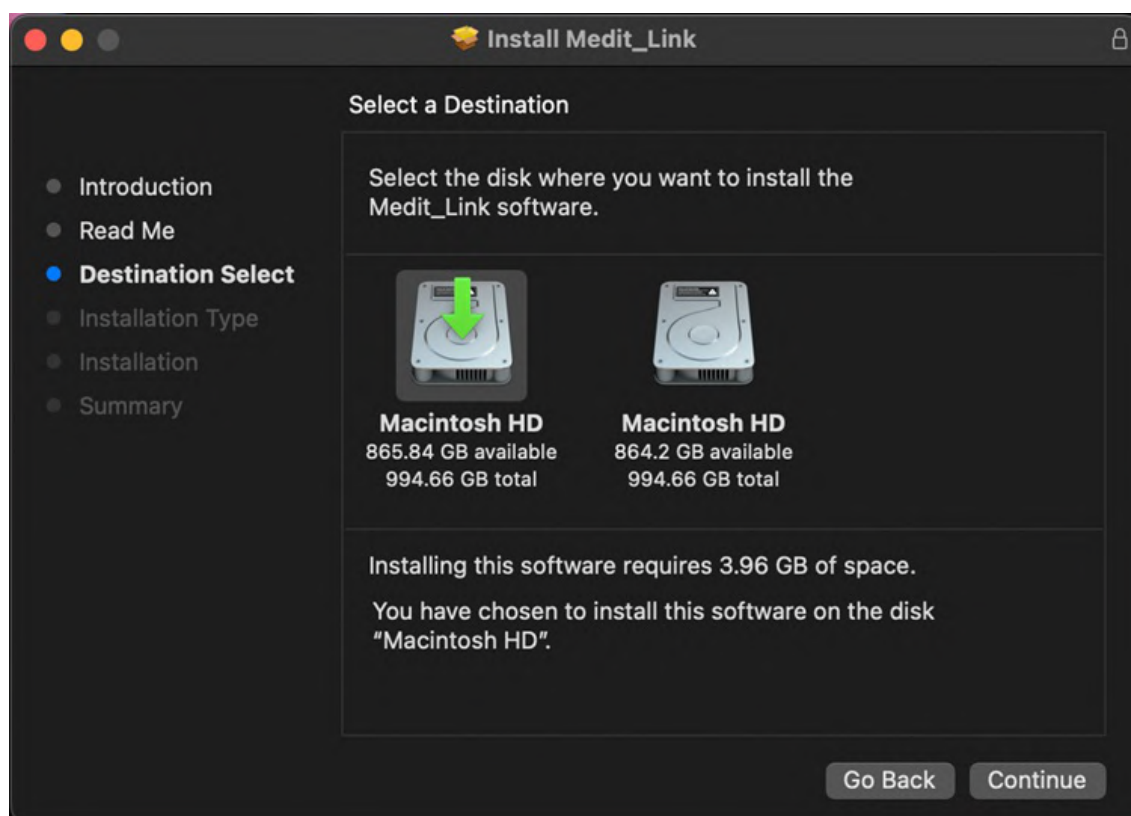


4. 「インストール場所の変更」をクリックし、インストール場所を変更します。

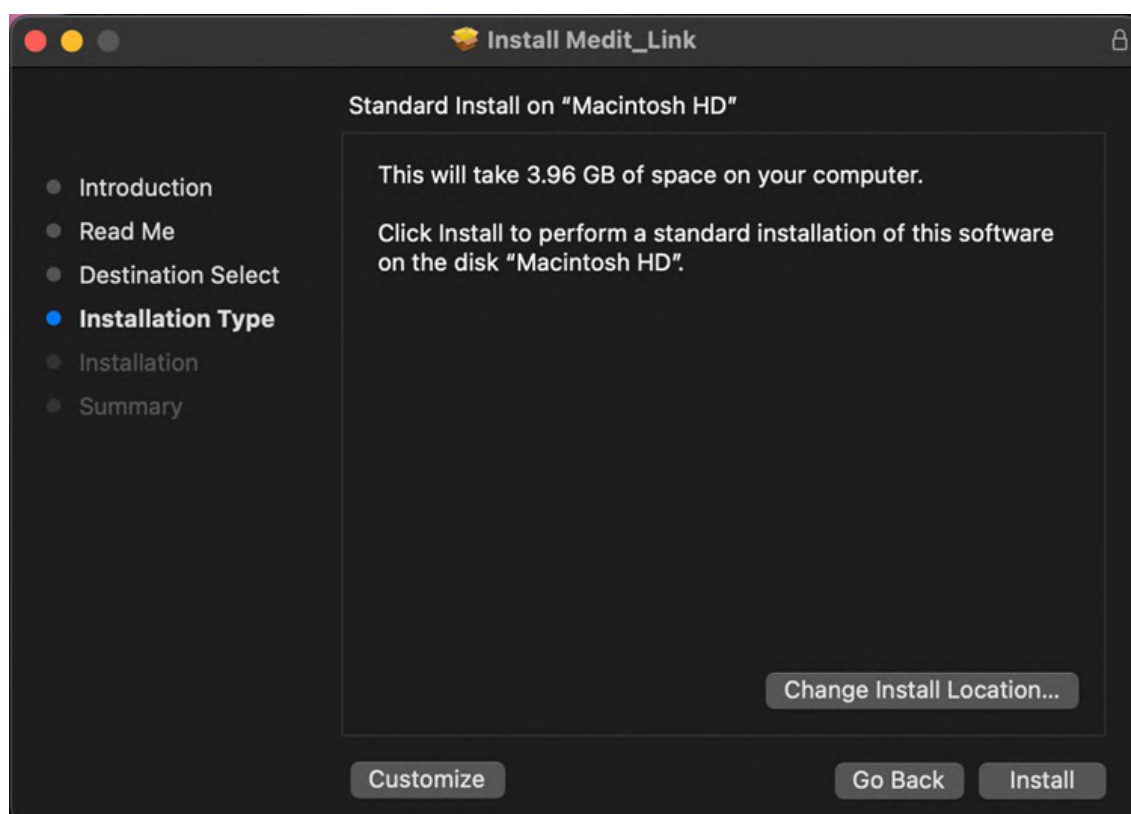


5. 「インストール」をクリックし、要求された場合にはインストールを許可するためにMac用パスワードを入力します。



6. インストールが完了するまで待ちます。

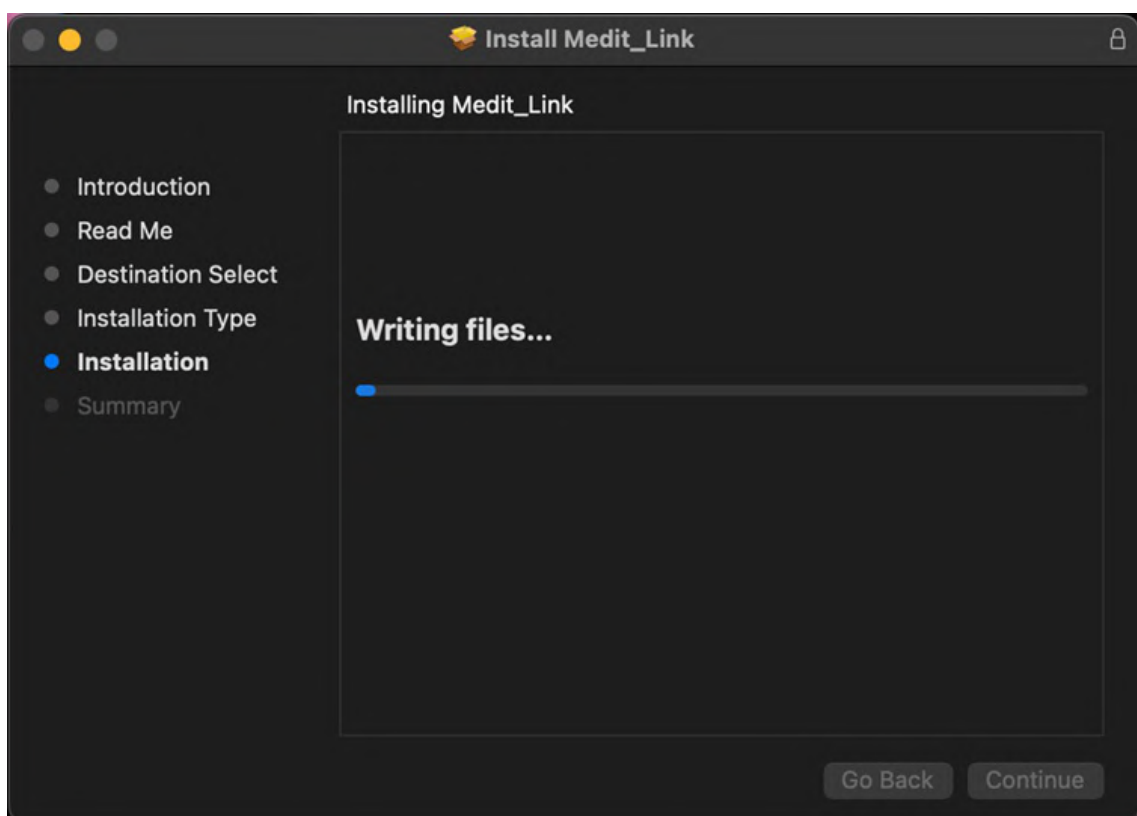


7. 「閉じる」をクリックし、インストール画面を終了します。

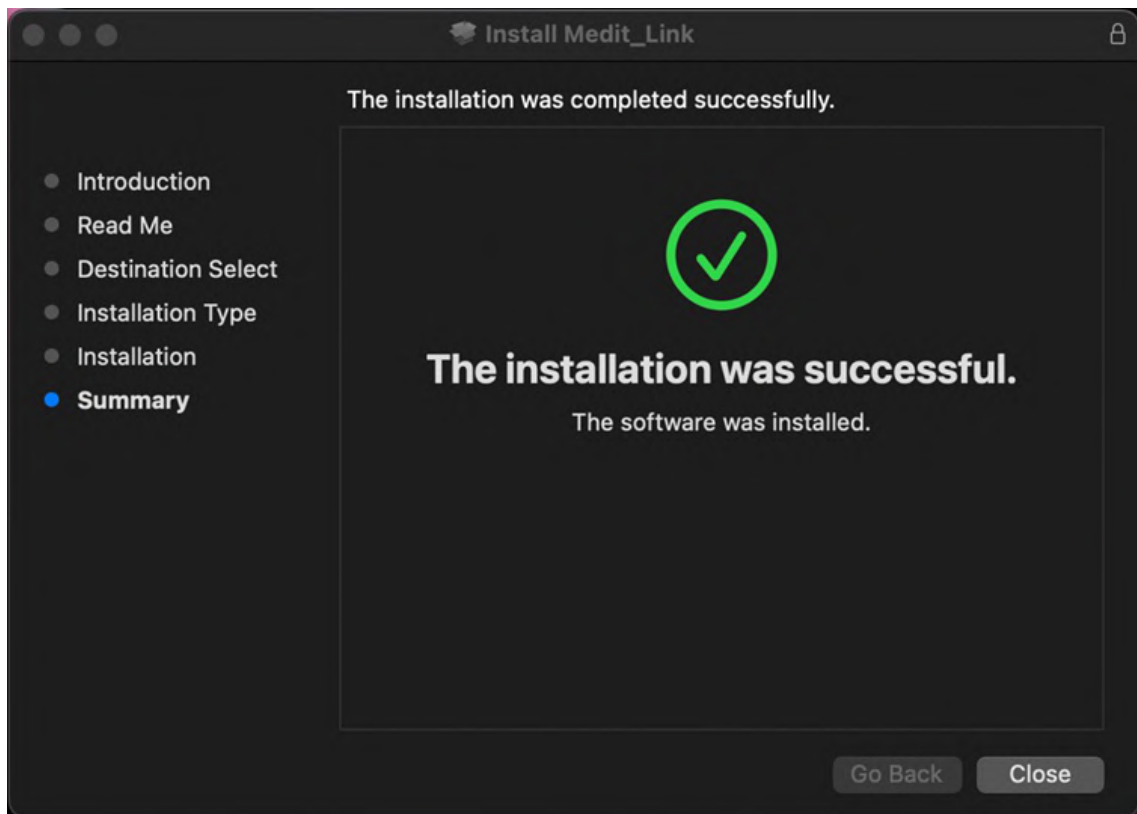

登録 & サインイン

Medit Link Webサイト

www.meditlink.comからMedit Linkサービスに登録します。

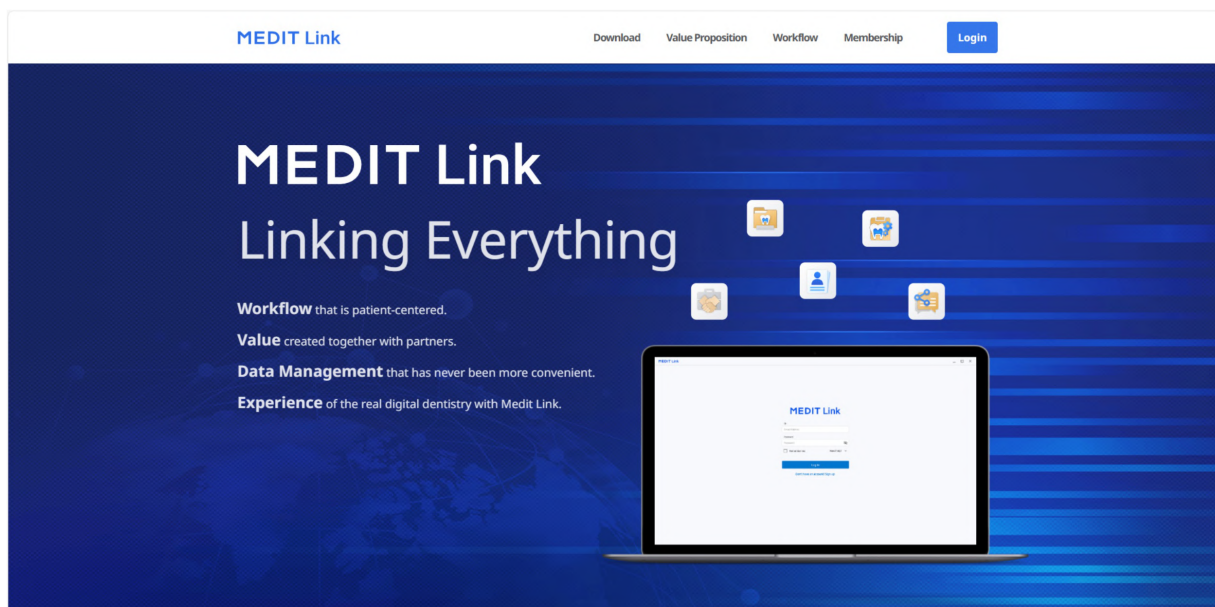

🔍 注意

www.meditlink.cnからMedit Link Chinaに登録します。

登録

Medit Linkサービスを使用するためには、アカウントに登録する必要があります。歯科医院または技工所としてアカウントを作成後に、Medit Linkで提供されている機能を利用できます。

以下の4つのアカウントタイプのうち一つを選択し、メンバーシップに登録し、アカウントタイプに応じて、フルまたは限定的な機能や権限のサービスを使用できます。

- 歯科医院 - 管理者
- 歯科医院 - メンバー
- 技工所 - 管理者
- 技工所 - メンバー

管理者は通常、組織の代表者であり、Medit Linkのすべての機能やサービスにフルにアクセスできます。一方で、メンバーアカウントは限定的なアクセスになります。

メンバーシップに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. 「まだアカウントをお持ちでない場合 ログインページの「登録」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. 説明内容を読んだ後に、希望するアカウントタイプの「登録」ボタンをクリックします。

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

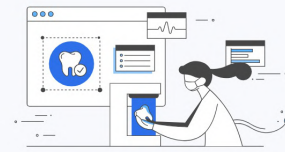

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 以下の登録フォームが表示されます。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. 歯科医院または技工所名を入力し、アカウントタイプに従い、以下のように進めてください。
 - 管理者として登録する場合、入力名が利用できるかどうかを「利用状況の確認」をクリックして確認します。
 - メンバーとして登録する場合は、「検索」をクリックします。管理者は他のメンバーが登録する前に組織を登録する必要があります。
5. 登録フォームの残りを記入し、「登録」をクリックします。

注意

登録中にマーケティング情報を受信することに同意された場合、Meditから製品やサービスについて役に立つ情報を受信できるようになります。

6. 確認メールが届きます。
7. 登録手続きを完了するには、確認メールにあるリンクでメールアドレスを認証します。

ログインおよびウェルカムページ

1. ログインページにメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. 事業情報を記入していない場合には、以下のポップアップが表示されます。

Welcome, stage-test-wh!

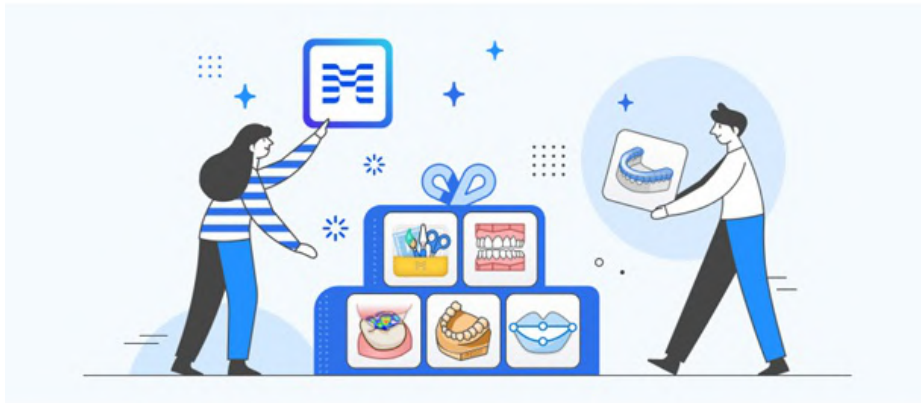

1 2 3 4

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

🔑 注意


Medit Linkサービスを使用するためには、管理者アカウントを使用して歯科医院または技工所情報を入力する必要があります。

3. 「マイ歯科医院へ」または「マイ技工所へ」ボタンをクリックし、事業名、表紙／ロゴ画像、提供サービス、オフィス住所、電話番号等の歯科医院または技工所情報を入力します。
4. ようこそページで入力した情報はMedit Link WebのMy Info >マイ歯科医院またはマイ技工所タブからいつでも編集できます。

Dashboard

Dashboardの概要

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit LinkアプリとWebの両方で、視覚化されたグラフやチャートで確認できます。

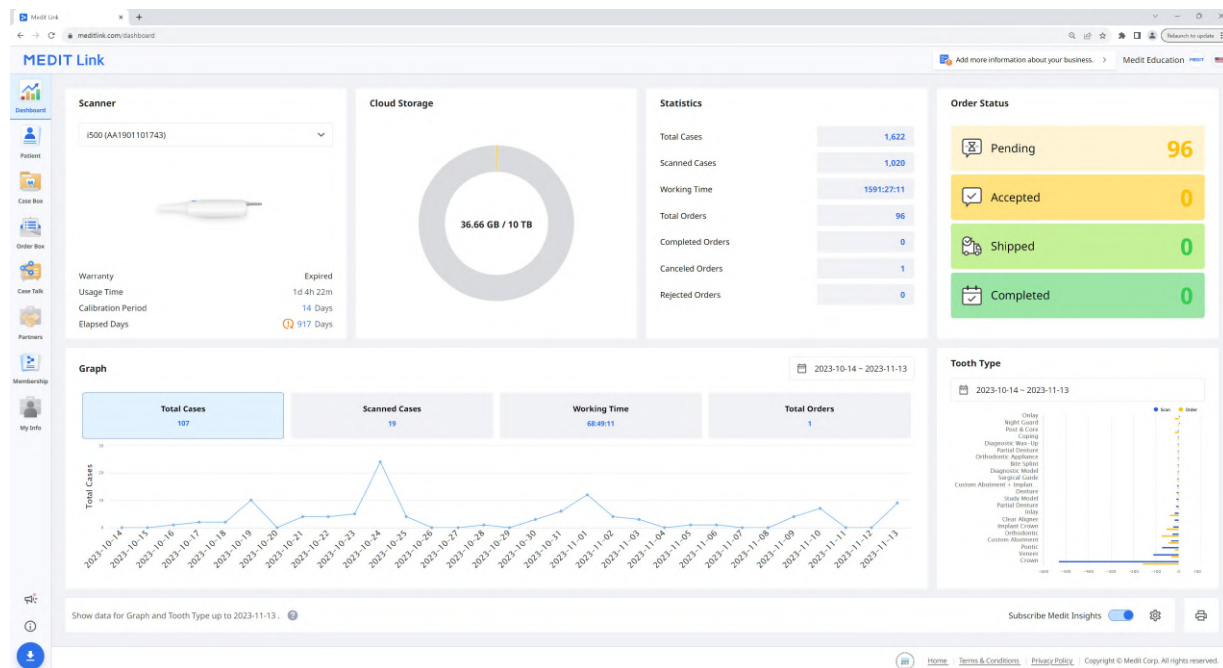

Dashboardのグラフと図は、Medit Linkで完了したすべての作業の統計データを表示しています。

スキャナー	保証、スキャナー使用時間、キャリブレーションの間隔、キャリブレーション経過時間を含む有効なスキャナーに関する情報を提供します。
クラウドストレージ	クラウドと使用中の総容量を表示します。
統計データ	作業ステータスに基づくケースに関する統計データを提供します。
注文ステータス	注文ステータスに基づくケースの統計データを提供します。
グラフ	期間別の作業情報グラフです。
歯の種類	治療情報ごとのスキャンおよび注文の数量に関する統計データを提供します。


Medit Insights

Medit Insightsは、レポートサービスを提供し、使用統計データの分析をしやすくします。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- Medit Insights

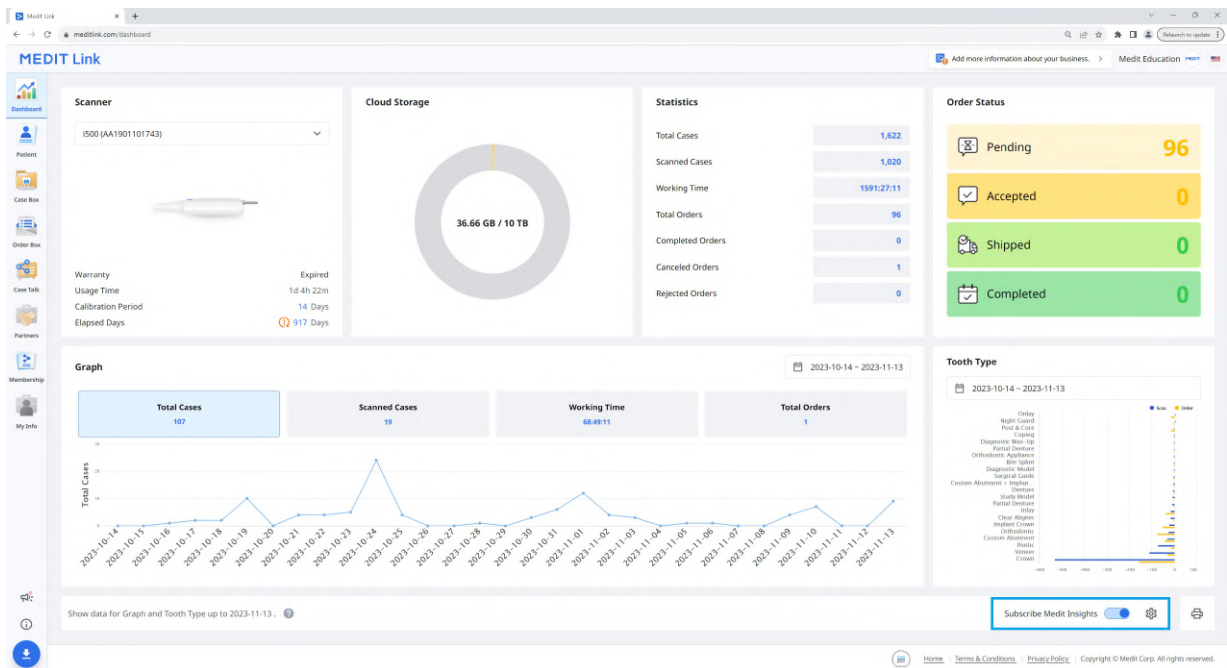

Medit Insightsを購読する

毎月2日にレポートのメールを送信します。追加での登録手続きは必要ありません。「Medit Insightsを定期購読」を有効にするだけです。

Medit Linkアカウントで使用したメールアドレスを使用しない場合、Medit Insightsを受信するために別のメールアドレスを設定できます。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

毎月2日に以下のような統計データ付きのメールが届きます。

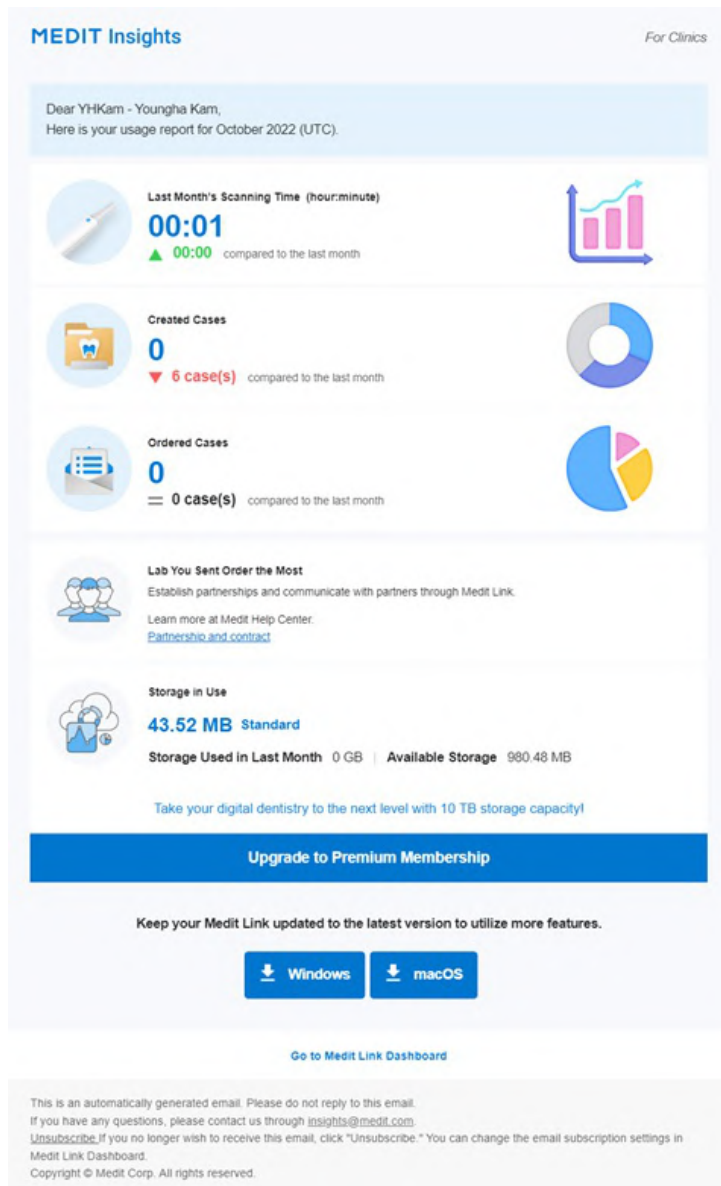

バナー	Meditはこちらに使用に関するヒントや情報を提供します。 * バナーを表示させたくない場合は、マイ情報>マイアカウントにあるマーケティング及び販売プロモーションに同意のボックスのチェックを外してください。
統計データ情報	スキャン時間、作成されたケース、最も発注した技工所等の統計データ情報が表示されます。
Medit Linkダウンロード	ボタンをクリックすると、Medit Linkダウンロードリンクが提供されます。
Dashboard	すべての統計データ情報は、Dashboard 情報に基づいています。Dashboardでより詳細な情報を確認できます。


Medit Insightsの購読を解除する

Dashboardの「Medit Insightsの登録」を無効にするか、受信したメールで「登録解除」をクリックします。

Patient

患者名と患者IDに基づいてケースを管理できます。


Medit Linkアプリケーションを介して登録されたすべての患者がリストに表示され、患者とそのケースを管理するのが簡単になります。

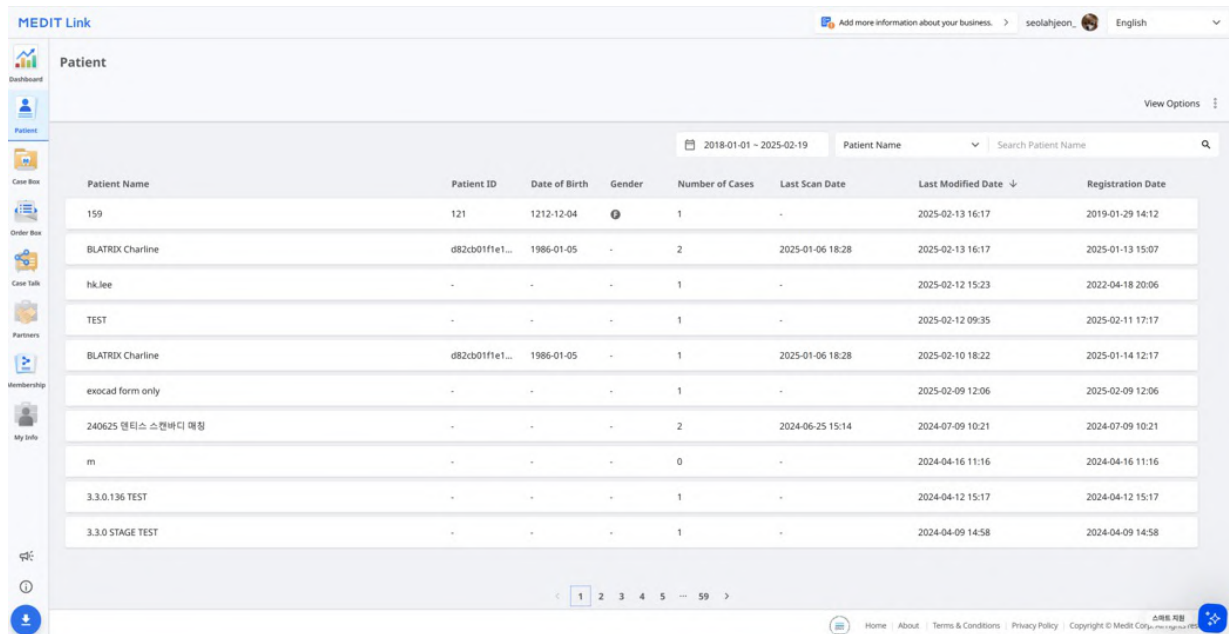

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 덴티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

患者の検索

1. 患者リストの右上にあるドロップダウンメニューから患者名または患者IDのいずれかの検索条件を選択します。

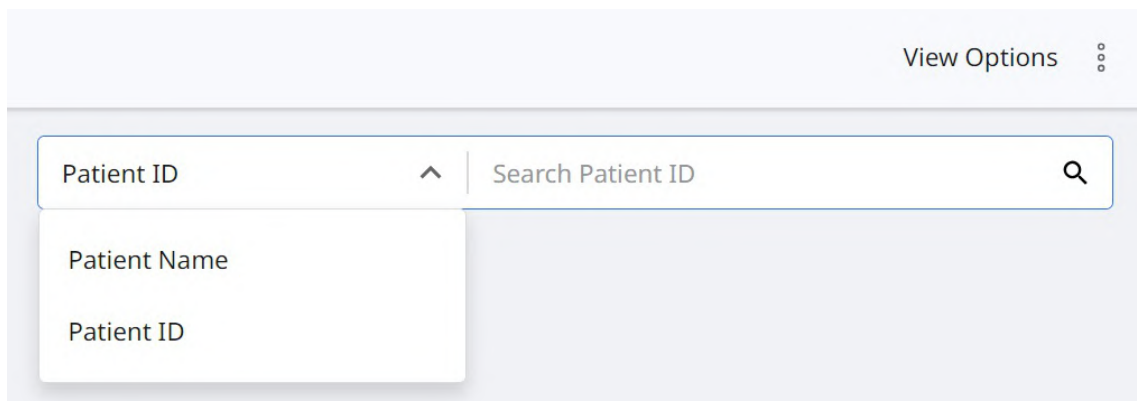

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. 患者名または患者IDを入力して、選択した検索条件に基づいて検索します。
3. 入力した患者名またはIDの患者のみがリストに表示されます。

Case Box/Work Box

Case Box(歯科医院)またはWork Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションでユーザーが作成したすべてのケースを表示します。別のプログラムをインストールせずにウェブブラウザからファイルを確認できます。

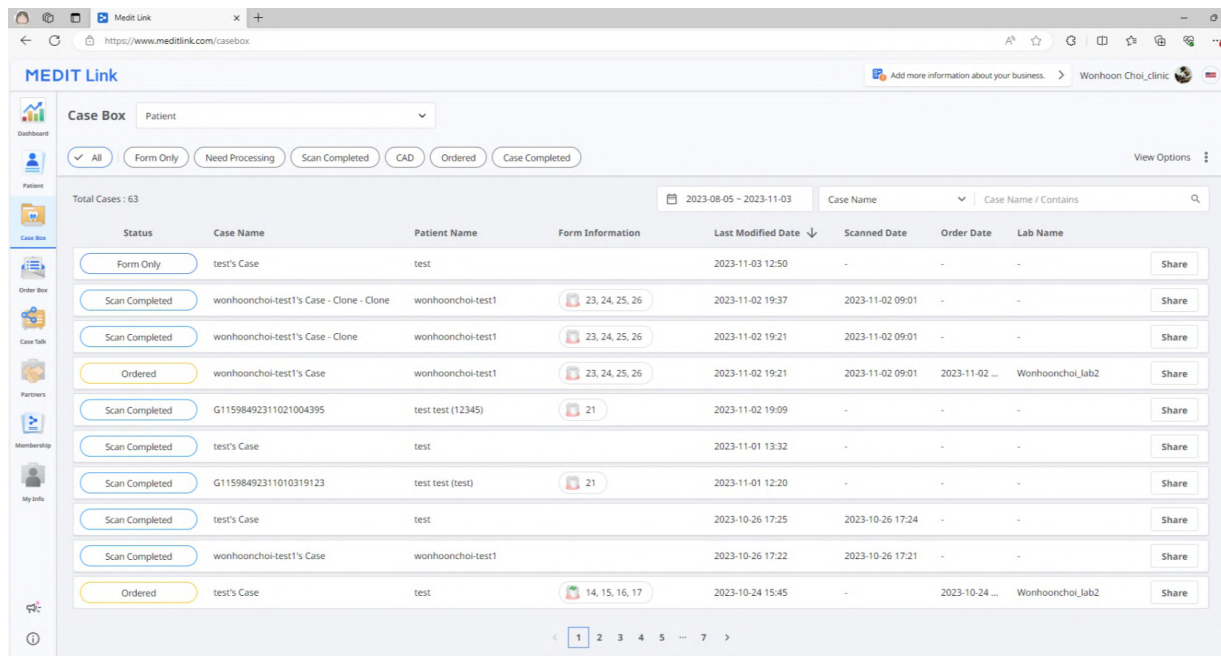


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is also present. The table below shows a list of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table is paginated, showing cases 1 through 7.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

ケースフィルタリング

患者別フィルタリング

患者別にケースをフィルタリングできます。特定の患者のケースを探す場合に役に立ちます。

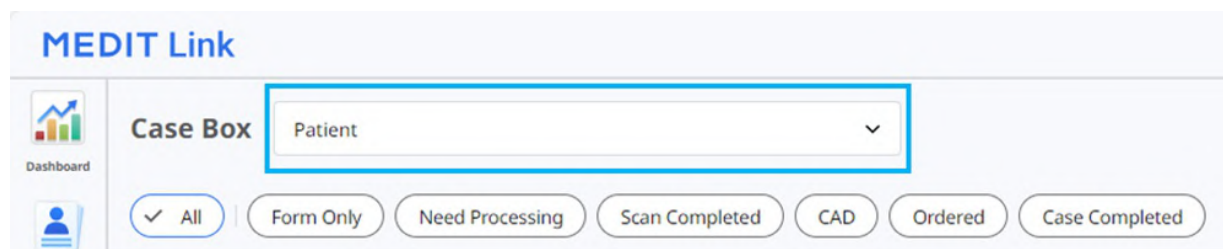

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and the 'Patient' option is selected. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 検索フィールドに患者名を入力します。

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. 検索結果リストから患者を選択します。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -+ 2 ^

testⓧ

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されるので、作業をするケースを探すのが簡単になります。

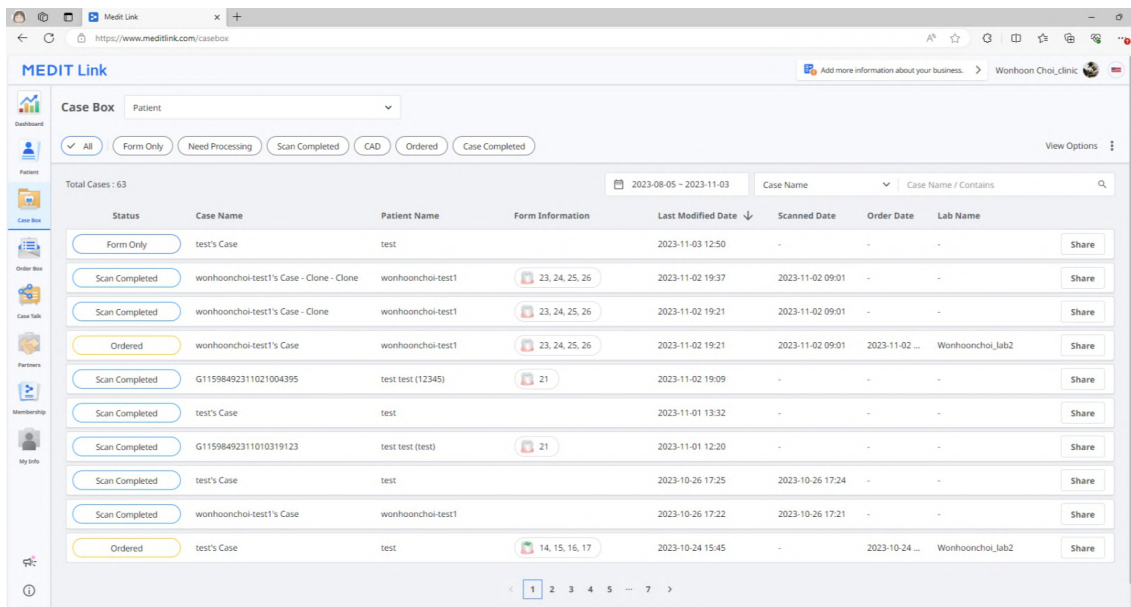

ステータス別フィルタリング

各ステータスに基づいてケースをフィルタリングできます。

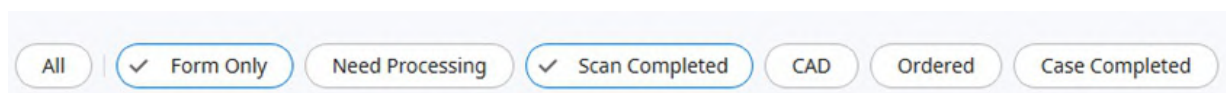

- 表示したいステータスをクリックできます。ブラウザには、選択されたステータスのケースのみが表示されます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

以下のステータスタイプはアカウントタイプに基づき提供されます：

Case Box(歯科医院)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box(技工所)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


期間別フィルタリング

設定した期間内で最後に修正したケースをフィルタリングし、表示できます。

1. 期間フィルターをクリックします。



2. 範囲を選択します。

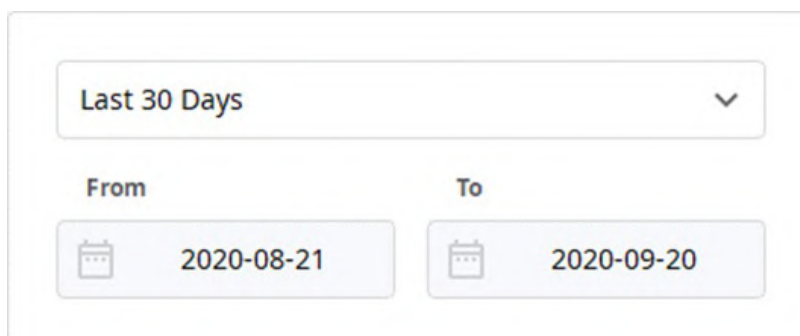

- すべて: すべてのケースを表示します。

- カスタム範囲: 開始日と終了日を特定して、選択した期間内で修正されたケースを表示します。
- 今日: 今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日: 昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間: 今日を除く過去7日間で最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間: 今日を除く過去30日間で最終修正日のケースを表示します。
- 過去90日間: 今日を除く過去90日間で最終修正日のケースを表示します。
- 今月: 今月のケースを表示します。
- 先月: 先月のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。

検索別フィルタリング

検索機能を利用して、必要な情報を容易かつ迅速に検索できます。

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

以下の検索オプションはアカウントタイプに基づき提供されます:

Case Box(歯科医院)	ケース名、患者名、患者ID、技工所名
Work Box(技工所)	ケース名、患者名、技工所名、注文ID

ケースの詳細

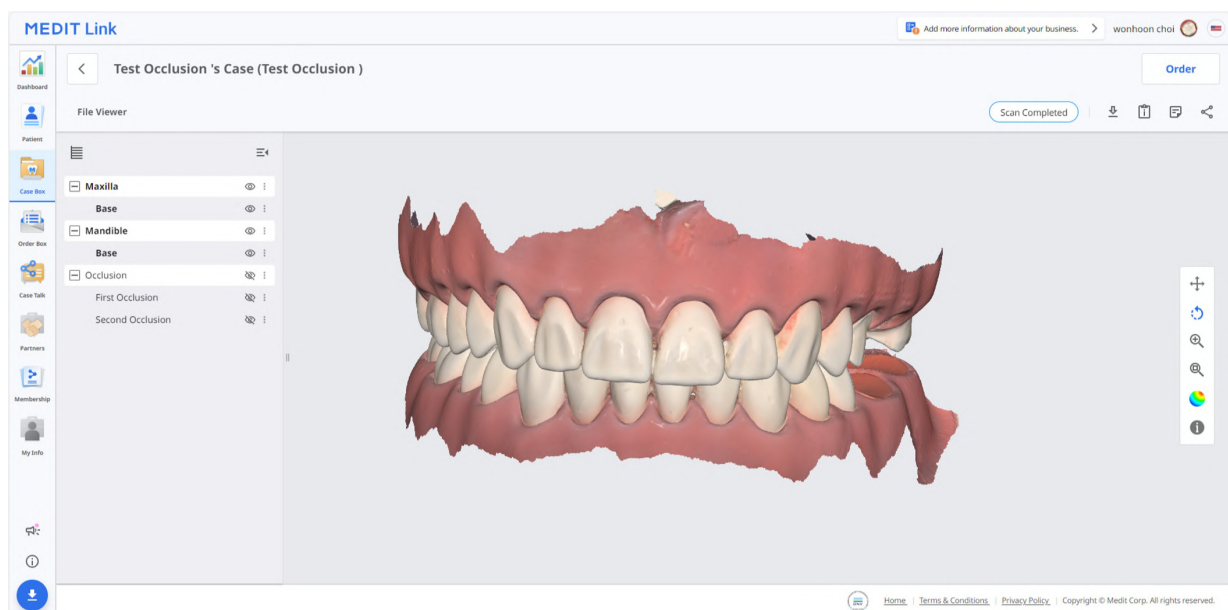

以下のケース管理ツールは、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	Order Box/In Boxに移動	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) に同じケースのショートカットを提供します。
	ダウンロード	ケースのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモとタグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	共有	共有用のリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。

Order Box/In Box

Order Box(歯科医院)またはIn Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションの注文済みケースを表示します。

注文詳細

The screenshot displays the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' page in the Medit Link application. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top header with the case name and a 'Cancel Order' button, and a main content area with order details and an 'Order List' table. Numbered callouts 1 through 6 highlight specific features: 1. Case name, 2. Cancel Order button, 3. Order tab, 4. Pending status, 5. Order details form, 6. Order List table.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- 1 ケース名および患者名を表示します。
- 2 注文管理(承認/キャンセル、納品/受領)用の機能を提供します。
- 3 使用可能なタブの表示: 注文、ファイルビューアー
- 4 ケースおよびファイルの管理用機能の表示: ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
- 5 注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
- 6 注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。


Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文ID、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ、タグ等の注文に関する詳細情報を確認します。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。 ファイルビューアーは取得したまたは添付された3Dモデルや2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、指定した特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有されているケースリストを確認できます。

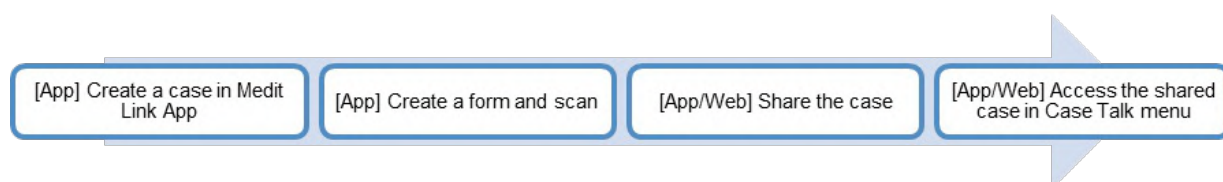


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。


Case Talkの作成

Case Box/Work Boxで作成されたケースに共有リンクを作成できます。

1. 共有するケースを探し、右側の「共有」ボタンをクリックします。

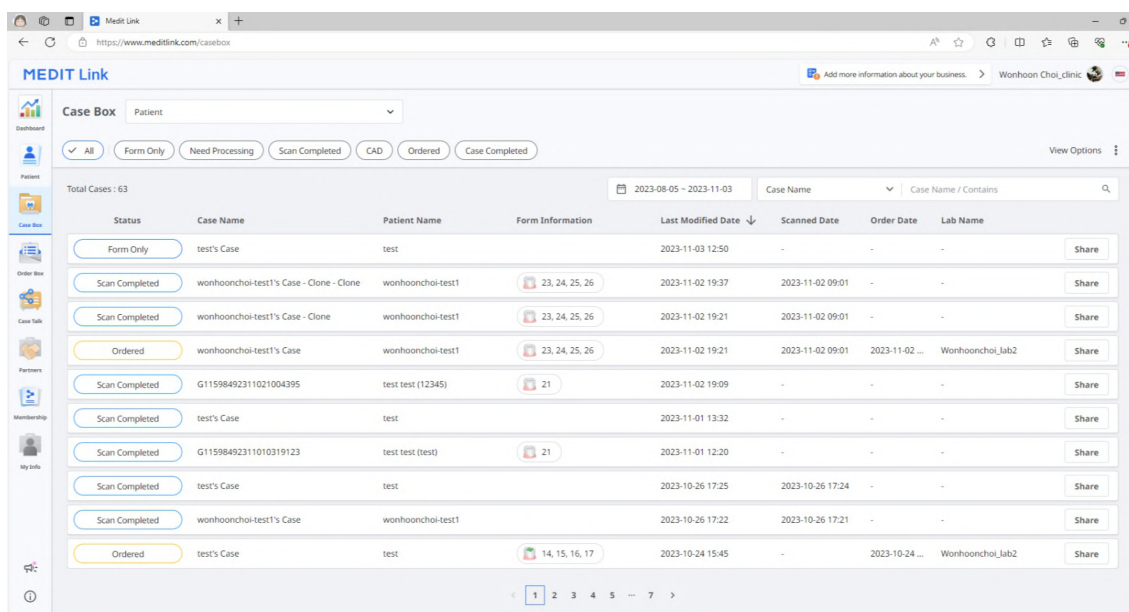

2. 共有したいケースを選択します。

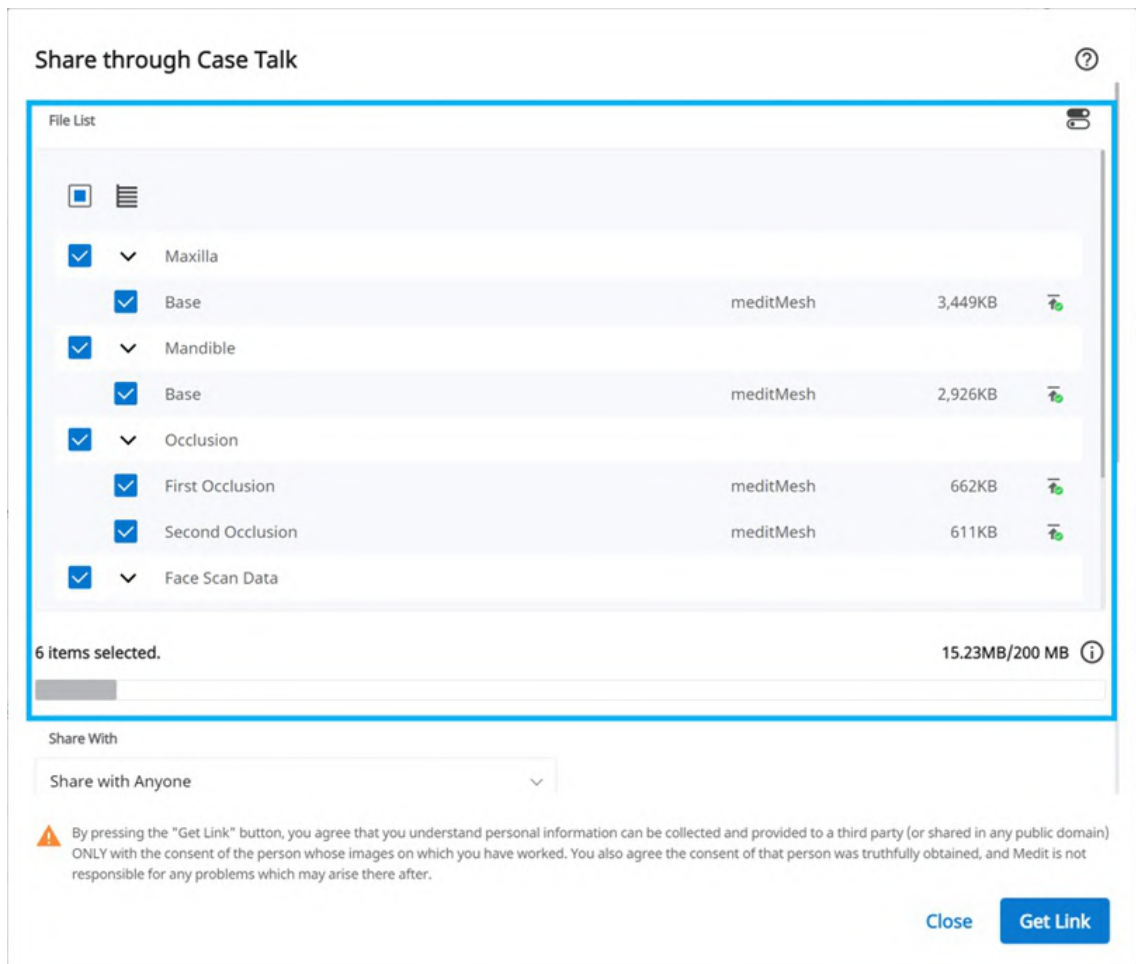

- 共有権限タイプと共有オプションを設定します。
- 「リンクを取得」をクリックし、共有リンクを作成します。

共有権限タイプと共有オプションの設定

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

✉

+

☰

❗ Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

📅 2022-06-28

❗ You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

❗ Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

❗ If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

❗ The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

❗ If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠ By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

共有相手	- 誰とも共有 共有リンクを作成します。ファイルを誰とも共有できます。 - 特定の人と共有する 共有リンクを作成し、特定の人に送信します。
～経由での共有	「特定の人と共有」を選択する場合、さまざまな方法で特定の人とリンクを共有できます。 - メールアドレス - SMS - Partners
有効期限	リンクの有効期限を設定します。リンクの有効期限が切れたら、リンクを共有している人は、リンクにアクセスできなくなります。有効期間を今日から最長90日間まで延長できます。
PINコード	データの安全性を確実にするために6桁のアクセスコードを設定します。
患者の名前を共有する	このオプションにチェックを入れる場合、リンクを持っているすべての人は患者名を確認できます。
ダウンロード許可を付与する	このオプションをオンにすると、共有リンクを持つすべてのユーザーがファイルをダウンロードできます。
コメントの投稿を許可する	- このオプションをチェックすると、共有リンクを介して通信できるようになります。 - オプションのチェックを外すと、受信者はコメント閲覧だけができ、コメントを追加することはできません。
コメント	コメントセクションにメッセージを残すことができます。

Case Talk詳細

共有ケースでファイルを確認できます。以下の機能は、Case Talk詳細ページ上でご利用できます。

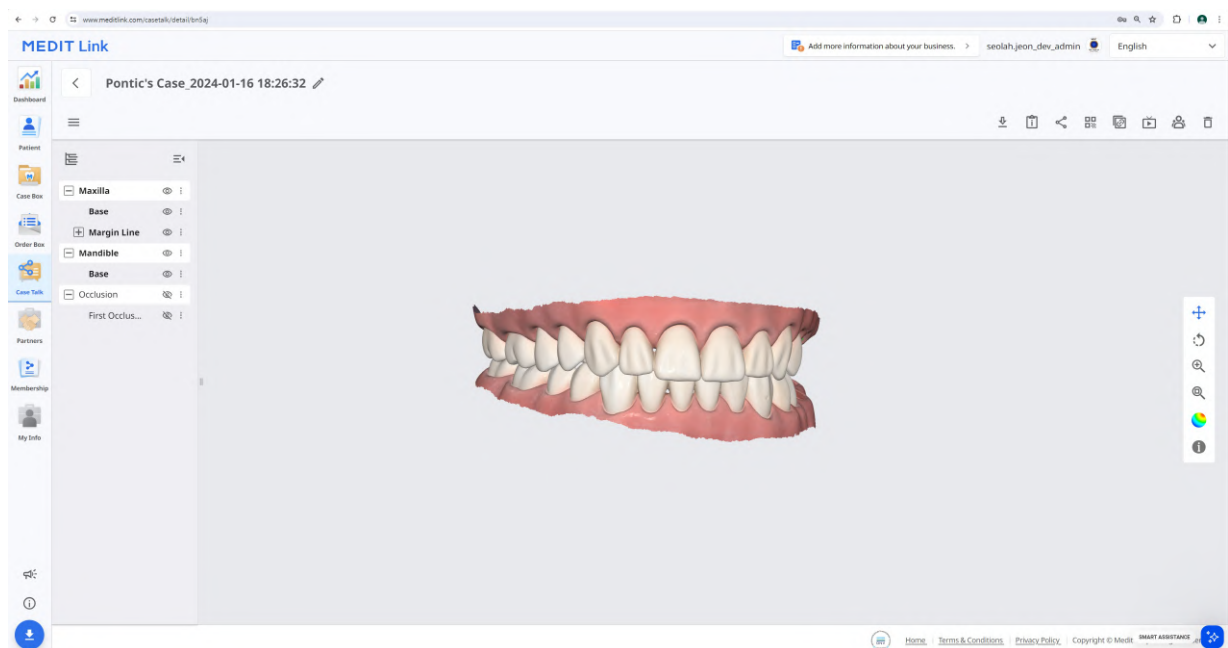

	ダウンロード	ケースのすべてのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更する。
	QRコード	QRコードを使用してケースを共有します。
	リンクをコピー	共有リンクをクリップボードにコピーします。コピーされたリンクは、ウェブブラウザ上で共有ファイルを表示します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクにアクセスしているすべてのユーザーを表示します。
	削除	共有リンクを削除します。削除した共有リンクはもうアクセスすることはできません。

注意


以下のサービスは、Medit Link Chinaではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

Webビューワー

WebブラウザのCase Talkを介して共有データを表示できます。

注釈とコメントを使用してリンクにアクセスした人とやり取りができます。

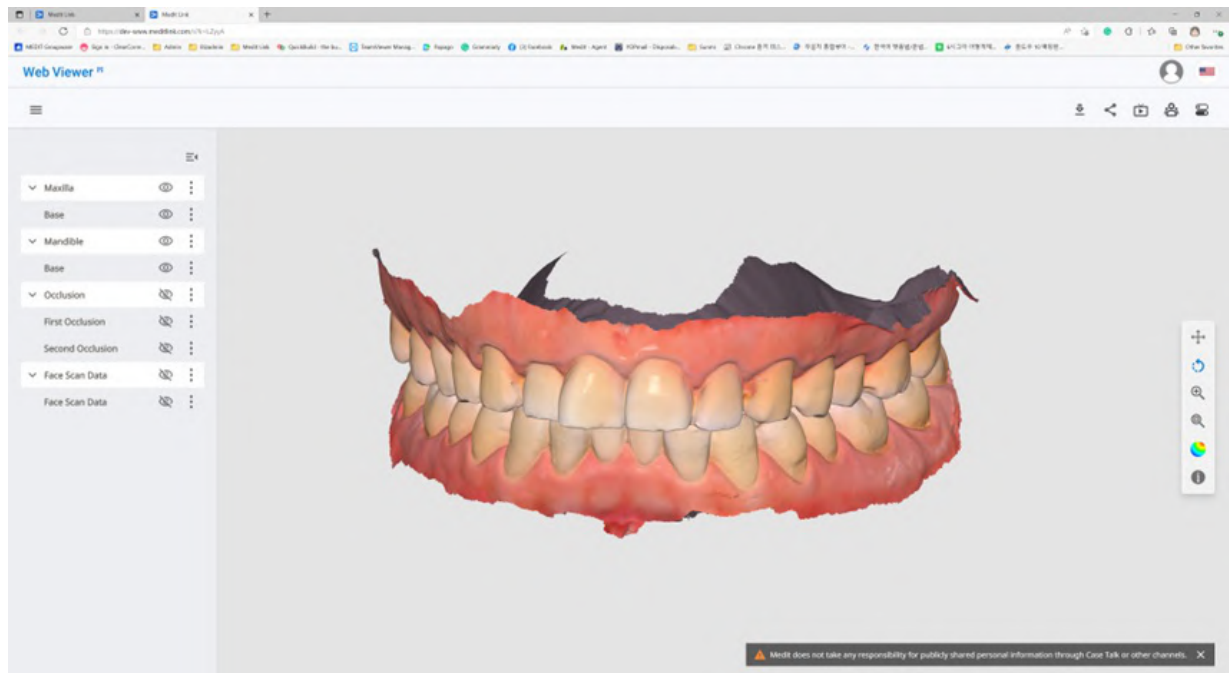

	ダウンロード	この場合、すべてのファイルをPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更します。
	QRコード	QRコードを使用してケースを共有します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクに接続しているすべてのユーザーを表示します。
	歯牙ラベリング	歯牙ラベリングシステムを変更します。


注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

注釈

3Dモデル上の特定の位置に注釈を追加できます。リンクを持っている人は誰でも追加された注釈を閲覧できます。

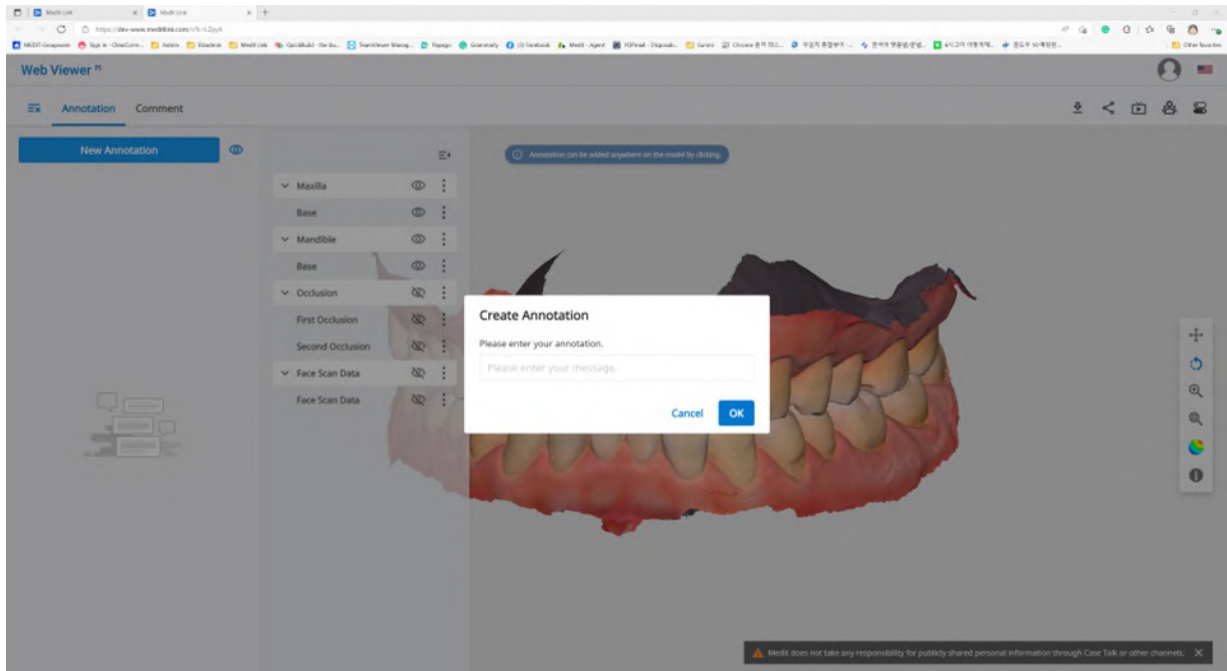

🔍 注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 注釈

1. 左上隅にあるメニューアイコンから「注釈」タブを選択します。「新規注釈」ボタンを使用して、どこでもデータをクリックして注釈を追加します。
2. メッセージを入力し、「OK」をクリックして保存します。

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. 注釈を簡易的な連絡方法として使用できます。
作成済みの注釈をクリックし、返信を入力し「送信」を押します。

This screenshot shows the detail view of an annotation. At the top, it displays the user's name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below is the annotation title 'Annotation 1' and a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

コメント

Web Viewerメニューの「コメント」タブを通して、リンクにアクセスするユーザーとやり取りができます。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- コメント

リアルタイムでの画面共有

リアルタイムで画面を共有できます。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- ライブ

1. 「ライブ」をクリックして、接続しているユーザーと自分のWeb Viewer画面を共有します。




2. 「OK」をクリックして、画面共有を開始します。
3. リンクにアクセスしている他の人は画面共有を承認する必要があります。
4. 画面共有をリクエストしたユーザーの画面は、リクエストを承認した人の画面と同期されます。


データツリー

すべてのデータは、データツリーの属性に従ってグループ化され表示されます。データを表示または非表示、不透明度などを調整できます。

データツリーコントロール

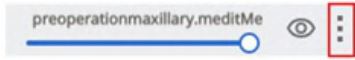表示/非表示	目アイコンをクリックし、ビューのデータを表示または非表示にします。データの表示/非表示をグループまたは個別ファイルでコントロールします。
不透明度	表示されている要素上にマウスを合わせ、不透明度スライダーを確認します。 スライダーを調整して、データの透明性を変更します。 
拡張メニュー	拡張メニューは、各データツリー要素の右側に表示されます。以下のオプションが含まれています。  ● これのみを表示: 現在のデータ以外のデータをすべて非表示にします。 ● 非表示: 現在のデータを非表示にします。

3D模型のコントロール

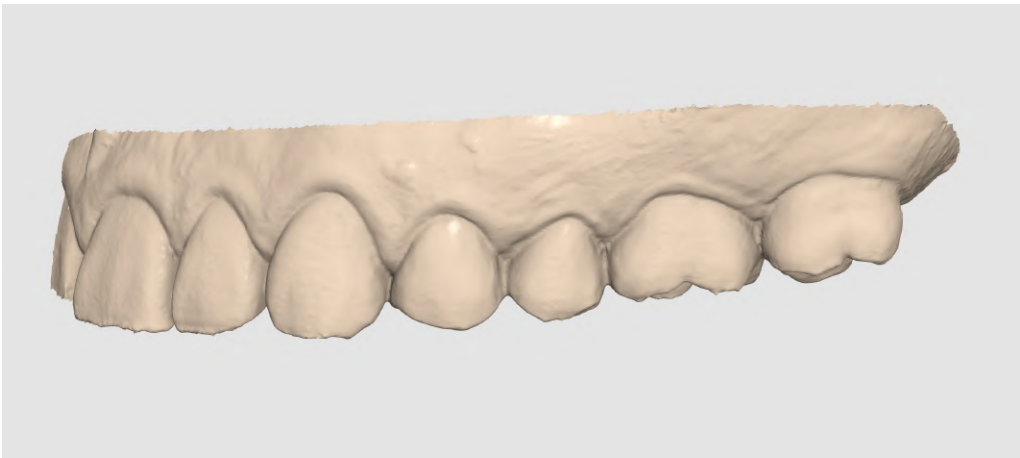✦	パン	模型を移動します。
○	回転	模型を回転させます。
≡	拡大/縮小	模型を拡大/縮小します。
🔍	ズーム フィット	画面中央に模型を配置します。
	データ表示モード	光沢なしの仕上げでカラーでデータを表示 (Phongレンダリング)。 
	モノクロ	単色でデータを表示。 

Partners

パートナー候補を検索し、パートナーシップをリクエストしたり、現在のパートナーのリストを表示したりできます。


注意

Googleマップを使用するサービスは、Medit Link Chinaではご利用できません。

パートナーを検索する


ビジネス名および/または住所でMedit Linkユーザーの検索ができます。

検索結果で、連携したい事業にパートナーシップのリクエストを送信できます。

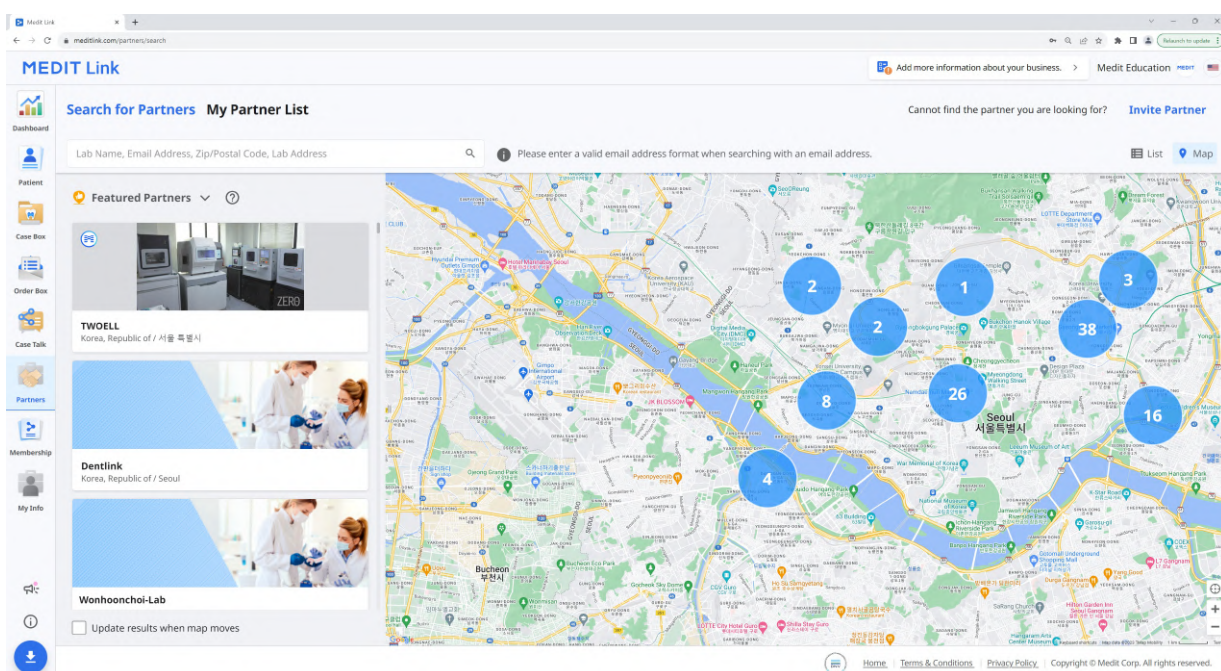

マイ契約リスト

マイ契約リスト中のすべての既存のパートナーの事業体との現在のパートナーシップを確認できます。

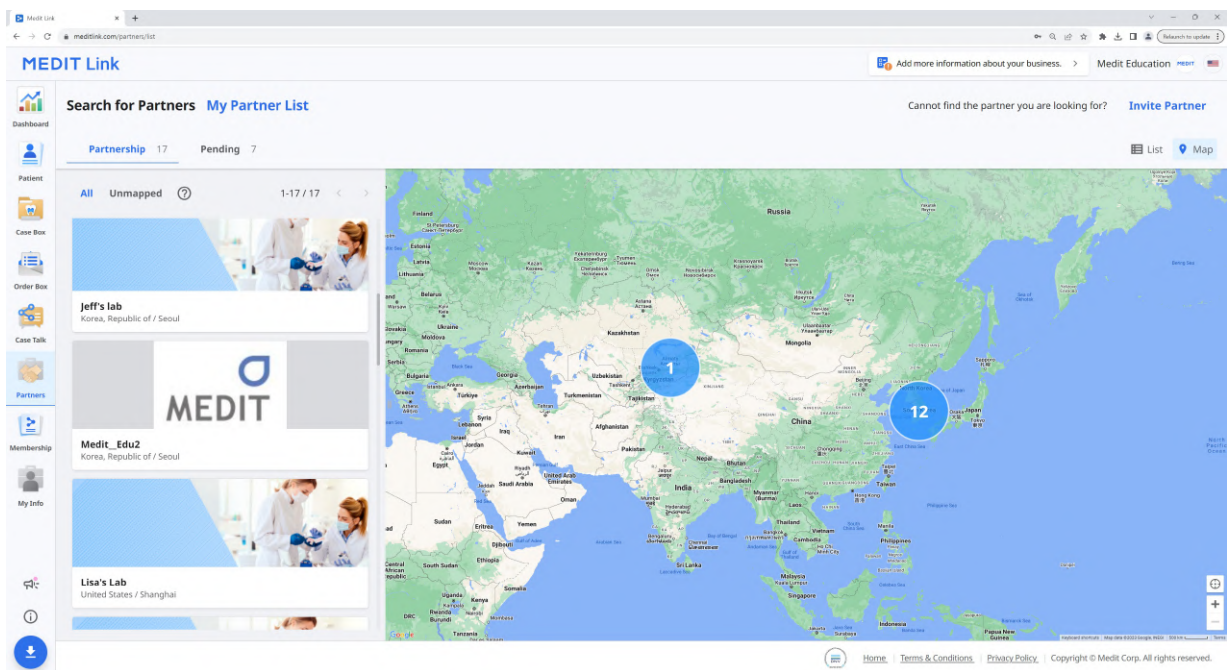

パートナーの招待

連携を希望する歯科医院または技工所がある場合、Medit Linkに参加するように招待できます。招待が承認されるとパートナーシップは自動的に形成されます。

1. 画面の左上にある「パートナーを招待」をクリックします。
2. 連携を希望する事業体のメールアドレスを入力し、パートナーシップリクエストと共に招待メールを送信します。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. 招待を受けた組織が招待を承認し、Medit Linkに登録すると、パートナーシップは自動的に成立されます。


Membership

멤버십

The screenshot displays the MEDIT Link web interface. The top navigation bar includes 'MEDIT Link', a user profile 'seolahjeon_', and a language dropdown set to 'English'. The main navigation menu on the left lists 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership' (selected), and 'My Info'. The 'Membership' section is active, showing tabs for 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The 'Medit Cloud Storage Plan' is highlighted, showing a '2 GB Plan' and a '10 TB Plan' (selected). The '10 TB Plan' is marked as 'Free (Promotion)' and lists benefits: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A 'Subscribe' button is visible. Below, '10 TB Plan Benefits' are listed, including a '10 TB Plan' with a code 'qqqq' and an expiration date of '2025-06-26'. A note states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More'. The 'Cloud Storage' section shows a 'Set Period' from '2018-01-01' to '2025-02-17' and a circular progress indicator showing '3.46 GB / 10 TB'. Below this, a table lists storage items: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (52.36 GB), and 'Result Files & Attachments' (3.46 GB). The footer contains links for 'Home', 'About', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © MEDIT Co., Ltd.'.

Medit Cloud Storage Plan

各プランの内容や割引クーポンや引換券、現在のサブスクリプションのステータスなどを確認できます。いつでもプランをアップグレードしたり、サブスクリプションをキャンセルできます。

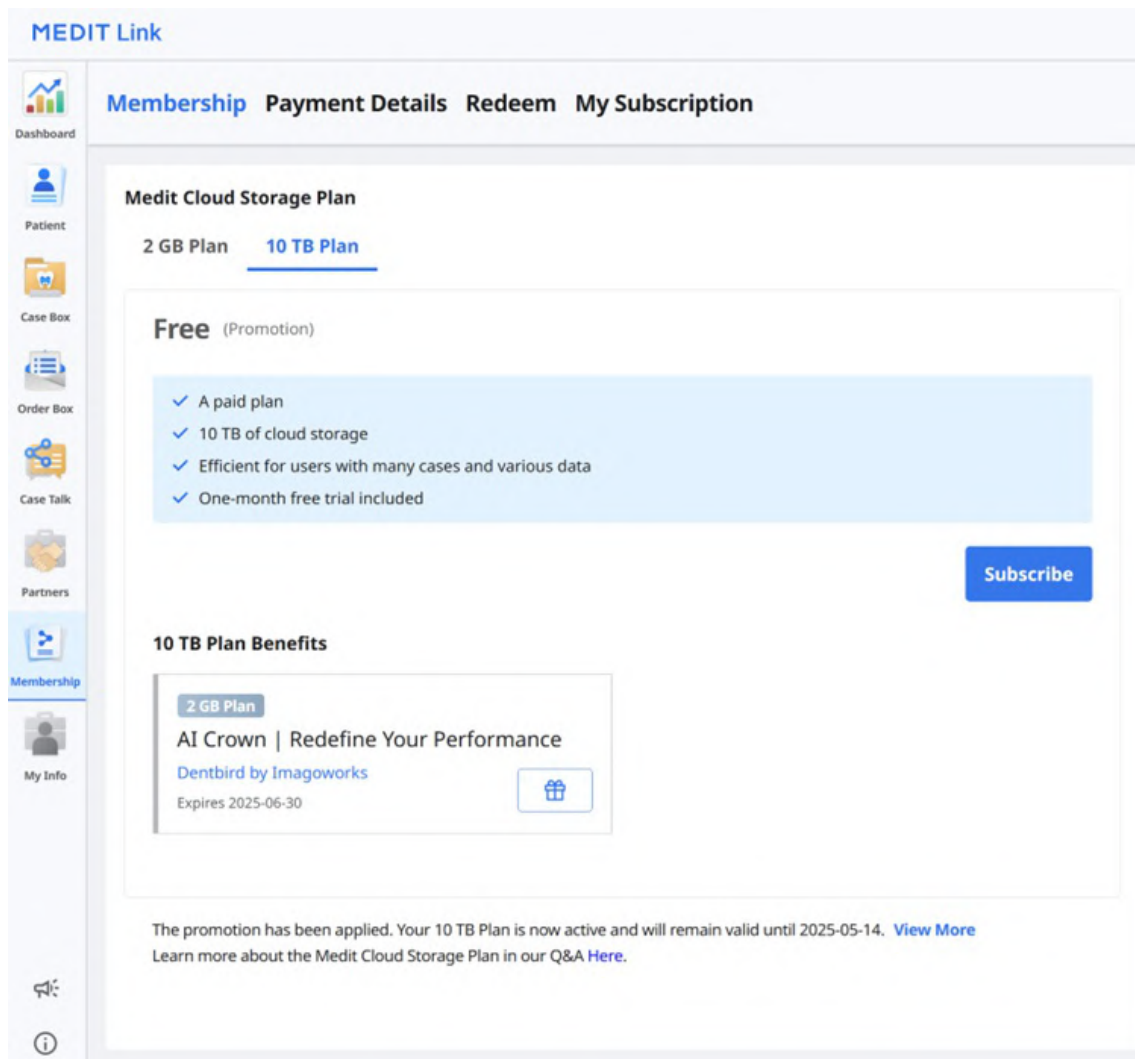

Medit Linkは次のクラウドストレージプランを提供しています：

2 GB Plan

- すべての登録済みユーザー向け無料標準プラン
- 2GBのクラウドストレージ
- 新規ユーザー向け

10 TB Plan

- 有料プラン
- 10TBのクラウドストレージ
- 多くのケースやさまざまなデータを所有するユーザー向け
- 1ヶ月間無料トライアル


	2 GB Plan	10 TB Plan
クラウドストレージ	2GB	10TB
月額料金	無料	月額\$9.99
* クラウドストレージでは、RAWデータは使用済みスペースとしてカウントされません。		

🔍 注意

メンバーシッププランはMedit Link Chinaでご利用できます。機能の公式公開まで10 TB Planを無料でご利用いただけます。

クラウドストレージ

右側のセクションで、クラウドストレージの管理ができます。

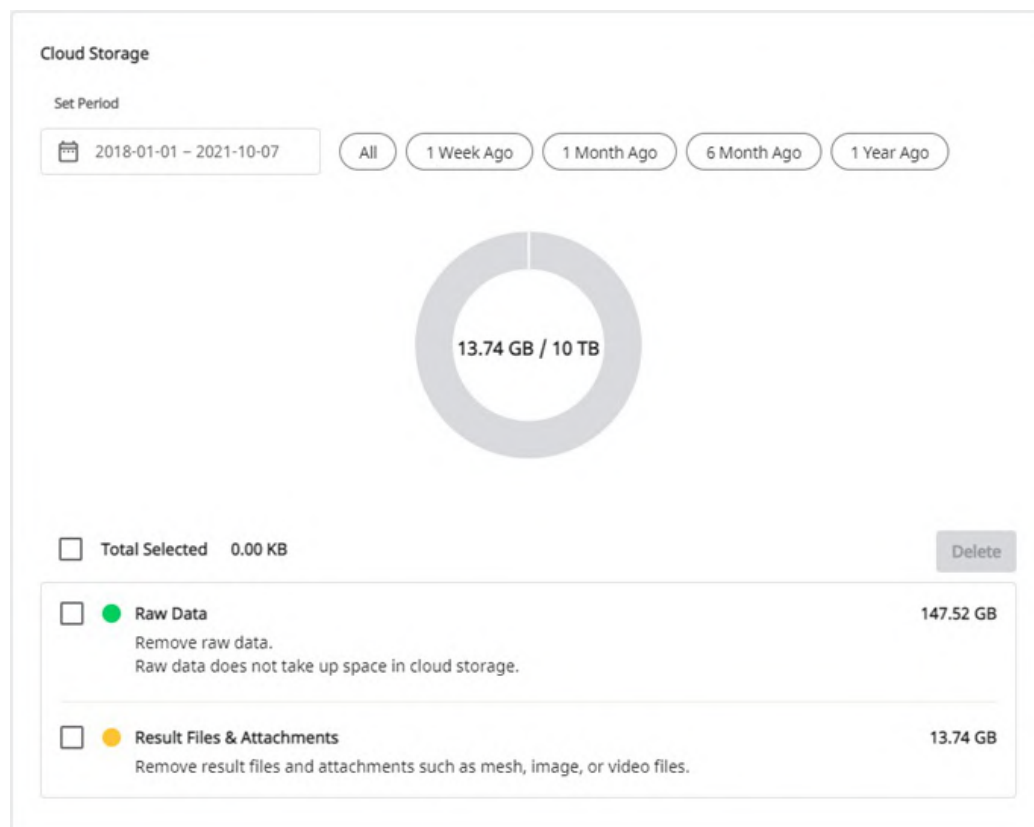

期間の設定	作成したデータを削除する特定の期間を設定します。 - すべて: すべてのファイルを表示します。 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。 6か月前: 作成後6か月を経過したファイルを表示します。 1年前: 作成後1年を経過したファイルを表示します。
RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を保護するために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。
結果ファイルと添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、容量を空けます。

サブスクリプション登録

現在、2 GB Planまたは引き換えコード付きの10 TB Planをご利用の場合には、10 TB Planのサブスクリプションに登録できます。

支払いはStripeサービス(www.stripe.com)をご利用いただけます。

1. Membership > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Planに移動し、「サブスクリプション登録」ボタンをクリックします。

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan 10 TB Plan


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. 10 TB Planの説明を確認し、「サブスクリプション登録」を再度クリックします。

Subscribe Membership

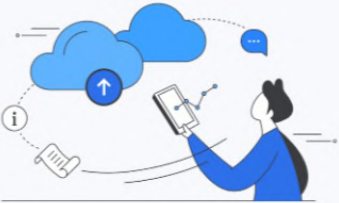

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly


- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. 価格と条件を確認し、支払いに必要な情報を入力します。次に、「登録」をクリックします。

Cancel Subscription

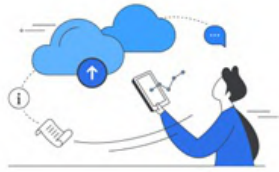

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

- 登録解除を確認するには、新たなポップアップウィンドウから再度「登録キャンセル」をクリックします。

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

- 登録がキャンセルされました。

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

- プランは次回の支払日から2 GB Planに変更され、クラウドストレージは2 GBが上限となります。クラウドストレージの容量が上限を超えると、ファイルのバックアップがされず、注文や共有の機能を利用できなくなります。

マイサブスクリプション

現在のサブスクリプションの詳細の確認、サブスクリプションの再登録、またはキャンセルは、マイサブスクリプションから行えます。お支払い方法も変更できます。変更は、次回に予定されている支払いから適用されます。

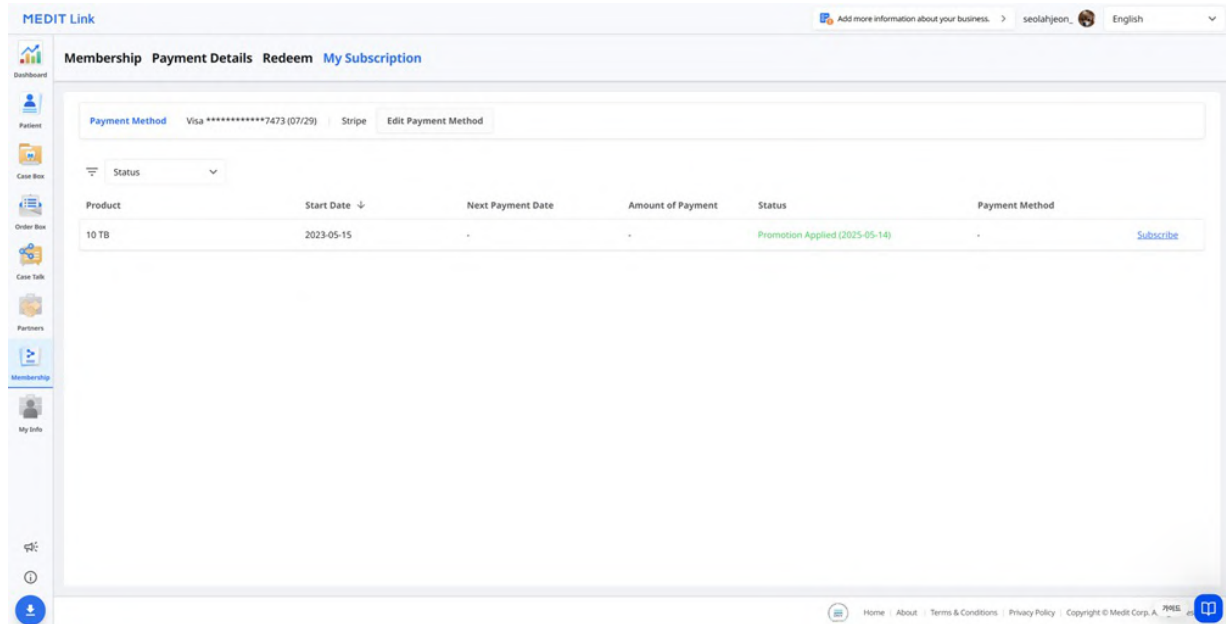

詳細


項目	説明
製品	サブスクリプションのタイプを表示します。
開始日	サブスクリプションまたはプロモーションの開始日を表示します。
次の支払日	次回の支払日を表示します。
支払額	支払い金額を表示します。
状態	サブスクリプション - 有効: サブスクリプションが有効です。 - 有効期限が近づいています: サブスクリプションは次回支払日に更新されず、キャンセルされます。 - 有効期限切れ: サブスクリプションが終了になりました。 プロモーション - 対象プロモーション: プロモーションコードが有効になりました。 - 保留中のプロモーション: プロモーションコードを有効にできます。 - 期限切れプロモーション: プロモーションコードの有効期限が切れました。
お支払い方法	支払いに使用されたカードの最後の4桁の数字を表示します。

サブスクリプションの再登録


項目	説明
クラウドストレージプラン	サブスクリプションボタンをクリックすると、10 TB Planのサブスクリプションに再登録できます。
アプリサブスクリプションプラン	アプリにサインインしてサブスクリプションに再登録できます。

支払い方法の追加方法

1. 「支払い方法の編集」をクリックします。

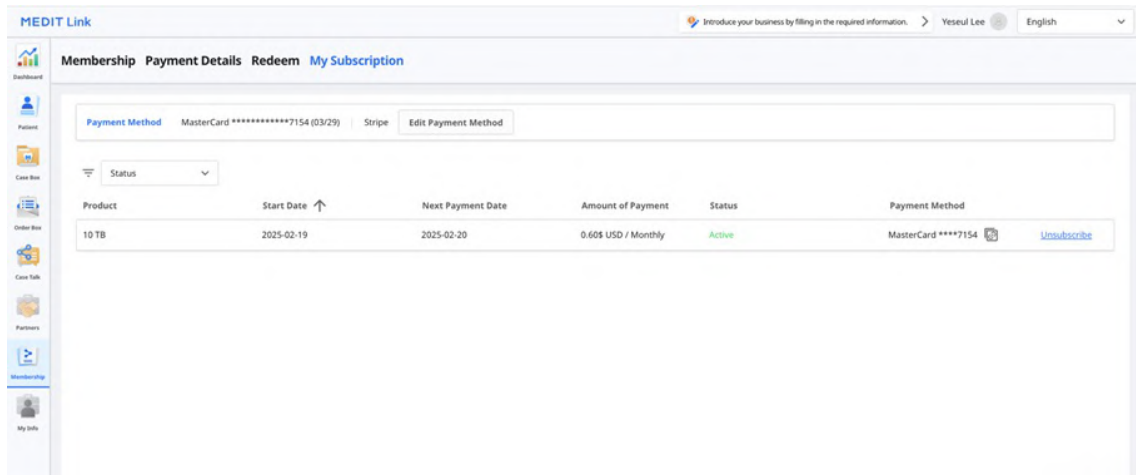

2. 「支払い方法の追加」をクリックします。

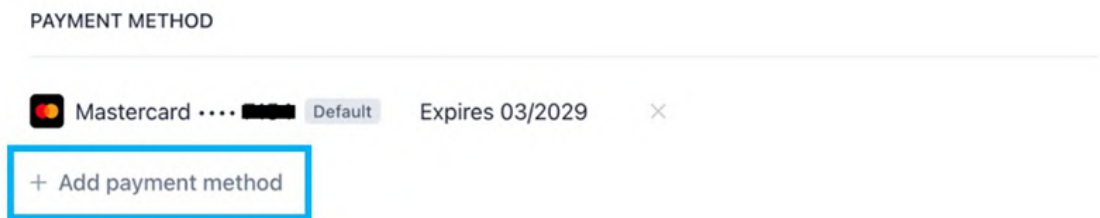

3. 必要な情報を入力し、「追加」をクリックします。

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. 新たに追加された支払い方法は、デフォルトとして設定され、次回のお支払いから使用されます。

PAYMENT METHODS

 Visa **** 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa **** 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

支払い方法の変更方法

1. 請求ダイアログウィンドウで変更するお支払い方法の横にある展開されたメニューアイコンをクリックします。

PAYMENT METHODS

 Visa **** 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa **** 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

2. 「デフォルトにする」をクリックし、デフォルトの支払い方法として選択したカードを設定します。

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▼

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

 Visa **** 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa **** 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

Make default
Delete

引き換え

プロモーションコードを引き換えて、10 TB Planに無料でアクセスできます。

詳細

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah.jeon_dev_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Register

Redeem Code

All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. GUIDES

項目	説明
製品	プロモーションが適用されるプランを表示します。
プロモーション	プロモーション名を表示します。
コード番号	コード番号を表示します。
登録日	コードが登録された日付を表示します。
From	プロモーションの開始日を表示します。
To	プロモーションの有効期限を表示します。
状態	- Registered: プロモーションコードが追加されご利用になれます。 - Waiting: プロモーションコードを有効にできます。 - Activated: プロモーションコードが有効になっています。 - Used: プロモーションコードの有効期限が切れました。

引き換えコードの登録

- 引き換えコードを入力し、「登録」をクリックします。
- 通知を読み、ポップアップダイアログで「登録」または「適用」を選択します。
 - 登録: 引き換えコードを登録します。登録後に後で引き換えコードを有効化し、使用することができます。
 - 適用: 引き換えコードを登録し、有効化します。プロモーション割引はすぐに適用されます。

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

引き換えコードの有効化

複数の引き換えコードを登録できますが、使用するコードを有効化する必要があります。


1. 使用するコードの横にある「アクティベート」ボタンをクリックします。
 - 「Activated」ステータスのコードがない場合、選択しているコードがすぐに適用されます。
 - すでにアクティベート済みコードが存在している場合には、新たに選択されたコードが「Waiting」ステータスに変更されます。現在アクティベート済み引き換えコードの有効期限が切れている場合、「Waiting」ステータスの新しい引き換えコードが自動的に有効になります。

注意

1個の引き換えコードのみをアクティベートでき、1個のコードのみが「Waiting」ステータスにできます。

支払い情報


サブスクリプションや支払い履歴を支払い詳細タブでご確認いただけます。

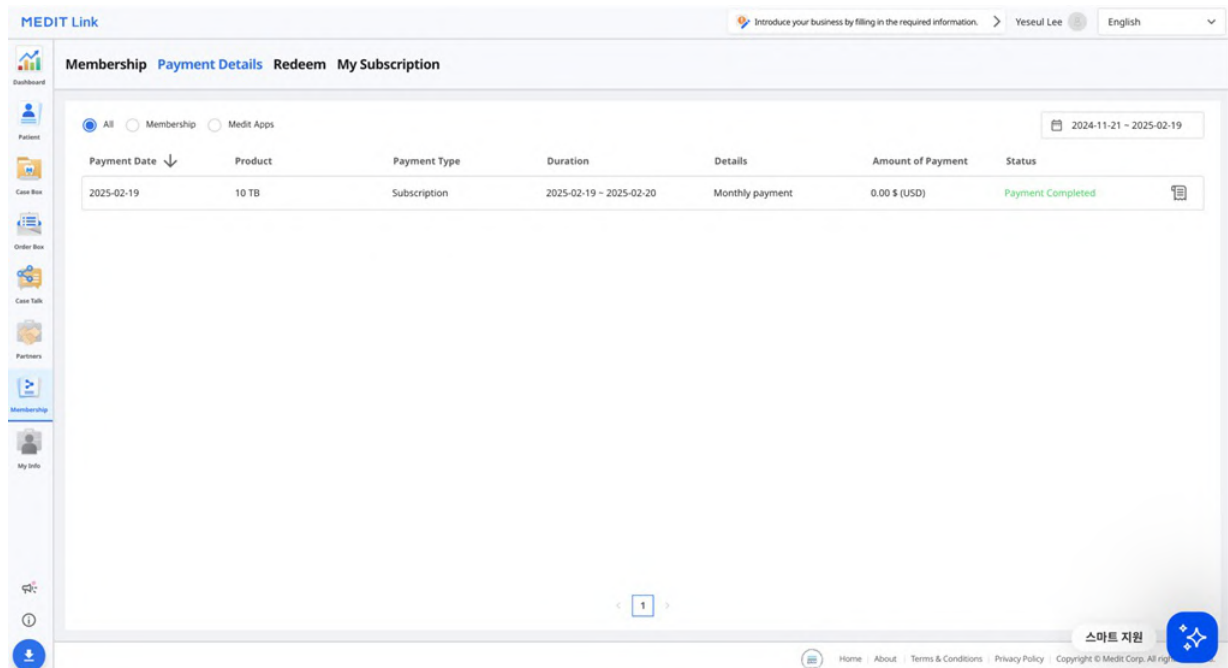

項目	説明
支払日	支払い日を表示します。
製品	購入したプランまたはアプリを表示します。
支払いタイプ	支払いタイプを表示します。 • サブスクリプション • 1回払い
期間	サブスクリプション期間を表示します。
詳細	支払い情報の詳細を表示します。
支払額	サブスクリプションまたは1回限りの購入金額を表示します。
状態	• Payment Completed: 支払いが処理されました。 • Payment Failed: 支払いが処理されませんでした。 • Payment Incomplete: 支払いが完了されませんでした。「今すぐ支払う」をクリックし、続けます。 • Waiting: サブスクリプションの更新のため支払いが保留中です。

請求の詳細を確認

右側にある領収書アイコンをクリックして、支払いインボイスと領収書を確認できます。

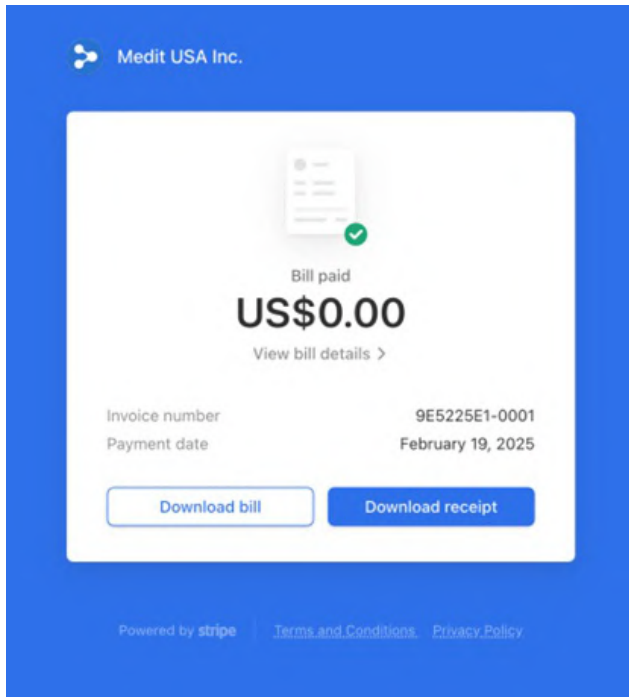

お支払い情報の「請求詳細を確認」をクリックします。

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	
	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

マイアカウント

My Infoで登録中に提供した情報を確認して編集でき、メンバーシップのステータスをチェックできます。

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner



Account Information

Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English ▼

Country/Region

Korea, Republic of ▼

📘 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

マイ歯科医院／マイ技工所（管理者アカウントのみ）

歯科医院または技工所の情報を確認・編集できます。このセクションは管理者アカウントのみが利用できます。

MEDIT Link


Dashboard


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info


My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

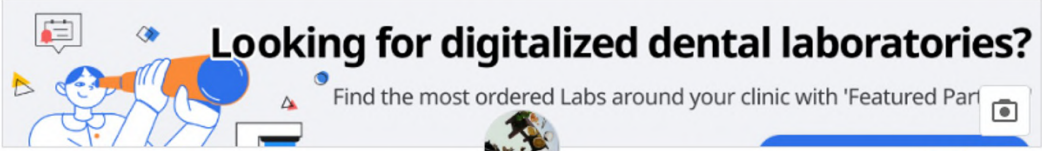

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

マイ・スキャナー

アカウントの接続済みデバイス情報を確認できます。

項目	説明
タイプ	模型の名前を表示します。
シリアル番号	デバイスのシリアル番号を表示します。
使用時間	デバイスがどのくらいの期間使用されているかを表示します。
状態	デバイスの登録ステータスを表示します。 • [登録済み] は、スキャナーが正常に接続され登録されたことを示しています。 • [未登録] は、スキャナーがもう登録されていないことを示しています。スキャナーが別のグループで登録されている場合、現在のグループでの登録は失われます。
最終接続	最終接続日を表示します。
最終キャリブレーション	最終キャリブレーション日を表示します。
保証開始日	保証の有効日を表示します。
保証期限日	保証の満期日を表示します。
残日数	保証満期日までの残日数を表示します。
購入	ユーザーによる保証の購入と延長を許可します。
削除アイコン	ユーザーによるリストからスキャナーの削除を許可します。

その他のメニュー

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

関連Webサイト

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報を取得できます。Medit Academy、Medit Academy YouTube、Meditヘルプセンター等のMeditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Medit Linkアプリのダウンロード


ウェブから最新のプログラムインストーラーをダウンロードできます。このメニューは、製品パッケージで提供されたインストーラーを紛失した場合やインストーラーが古いバージョンの場合に便利です。

注意

Medit Linkはインターネット接続がされている場合、自動更新されます。

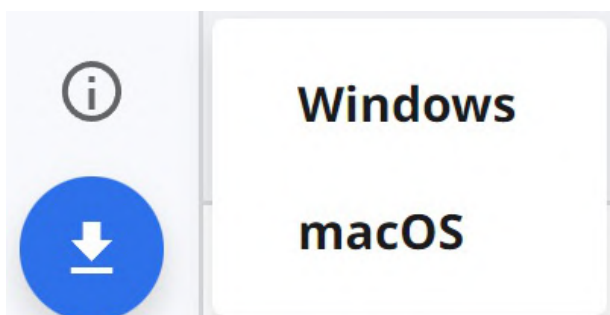

概要

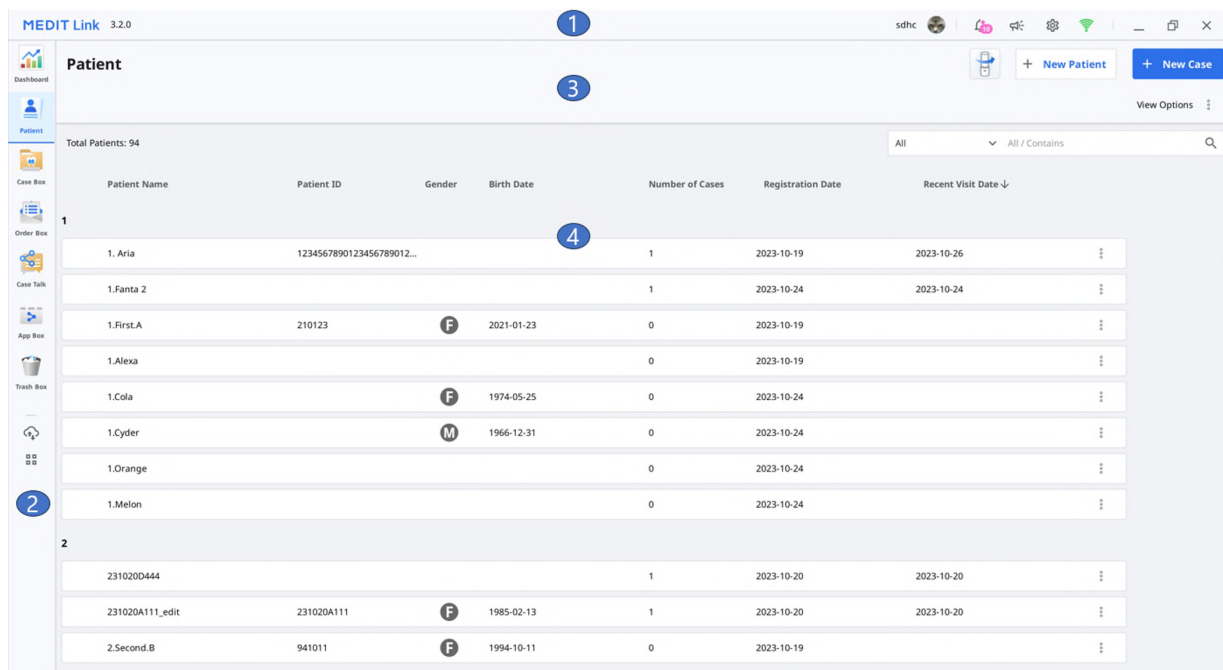

1	タイトルバー	詳細情報については、 Medit Link App > タイトルバー を参照してください。
2	メニュー	詳細情報については、 Medit Link App > メニュー を参照してください。
3	ツールおよび機能	詳細情報については、 Medit Link App > ファイルビューアー 、 Medit Link App > 表示オプション を参照してください。
4	ケースリスト	詳細情報については、 Medit Link App > フィルタリングと検索 を参照してください。

下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。

アカウントタイプ		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
歯科医院アカウント	管理者	○	○	○	×	×	○	○	○
	メンバー	○	○	○	×	×	○	○ * 復元機能のみ	○
技工所アカウント	管理者	×	×	×	○	○	○	○	○
	メンバー	×	×	×	○	○	○	○ * 復元機能のみ	○

タイトルバー

タイトルバーを使用すると、アカウント情報、通知、通知 & 更新、設定、ネットワークステータスなどの機能に素早くアクセスできます。



ユーザー情報

ユーザー情報には、プロフィールの画像、歯科医院または技工所名、メールアドレス、ユーザー名などの基本的なユーザー情報が含まれています。

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

通知

パートナーシップ、注文、作業進行に関連する通知を表示できます。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery 2020-08-20 오후 5:20
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order 2020-08-20 오후 5:18
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work 2020-08-14 오후 6:33
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work 2020-08-14 오전 10:15
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

1	ボックスにチェックを入れると、未読メッセージだけを表示できます。
2	いずれかの通知をクリックすると、すぐに関連するケースまたはWebページに移行します。

通知 & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

設定

設定ダイアログではプログラムを設定できます。

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

ネットワーク接続が良くない場合は、以下の制限がかかる可能性があります。

- ケースの注文や作成、Case Talkでの共有、クラウドの同期など、一部の機能は制限されます。
- ネットワーク環境の影響のため、サービスの全体的なパフォーマンスが低下します。

この場合、基本的な作業を行うためにオフラインモードを入力し、インターネットに接続されたら必要な機能を使用します。

注意

ネットワーク速度記号は、現在のエリアとAWS (Amazon Web Service) 間の応答速度を示しています。使用しているネットワーク速度を表示しているのではないため、使用しているネットワーク速度は十分であっても、ステータスは悪いと表示される可能性があります。

他の処理で同じネットワークを使用している場合、速度が弱いまたは悪いと表示されることがあり、Medit Linkの全体的なパフォーマンスが悪くなることがあります。この場合、他の処理と一緒にネットワークを共有しないでください。例えば、「RAWデータのアップロード」機能はネットワーク処理のかなりの部分を占めます。ステータス記号が弱いまたは悪いと表示されている場合には、設定 > RAWデータのアップロードにアクセスし、「自動アップロード」をオフにします。

設定

一般

全般的なシステム設定のオプションを提供します。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

フォルダの保存	Medit Linkおよび接続されているプログラムで生成された結果を保存するためのフォルダーを特定します。	
アプリインストールフォルダ	App Boxで「使用可能なMedit AppsとPartner Appsのインストール先を指定します。	
言語設定	プログラム用の言語を選択します。	
歯牙ラベリング	FDIとUSのいずれかの歯牙ラベリングシステムを選択します。	
通知	チェックを入れると、プログラムの更新情報についての通知を受信できます。	
RAWデータをアップロード	チェックを入れると、RAWデータはクラウドに自動的にアップロードされます。これは、別のPCで同じアカウントを使用してMedit Linkを使用時にオリジナルのデータをバックアップし、シームレスにスキャンを実行する時に役立ちます。オリジナルデータのクラウドバックアップは、Medit Scan for Clinicsで取得されたデータにのみ適用されます。	
クイックスキャン	フォーム情報を入力する必要なく、下記のスキャン工程をMedit Scan for Clinicsに自動的に表示させるかどうかを選択します。 ● 上顎施術前 ● 下顎施術前 ● 顔面スキャン	
表示オプション	高度なレンダリング	チェックを入れると、3Dモデルはより鮮明でリアルなレンダリングで表示されます。
	色テクスチャの調整	3Dモデルの明るさを調整します。 * 色の結果は、他のソフトウェアで同じデータを開いた場合、Medit Linkとは少し異なって見える可能性があります。
Meditユーザー体験向上プログラム	Meditユーザー体験向上プログラムにご参加ください。 ● 当社の製品とサービスの向上のために回収した情報を使用します。 ● 個人を特定するような情報は回収しません。	
ログイン後のデフォルトページ	プログラム開始時に表示されるデフォルトメニューを選択します。 ● 歯科医院アカウントはPatientとCase Box間で選択可 ● 技工所アカウントはIn BoxとWork Box間で選択可	

ストレージ管理

ローカルおよびクラウドストレージのスペースを確認および管理します。

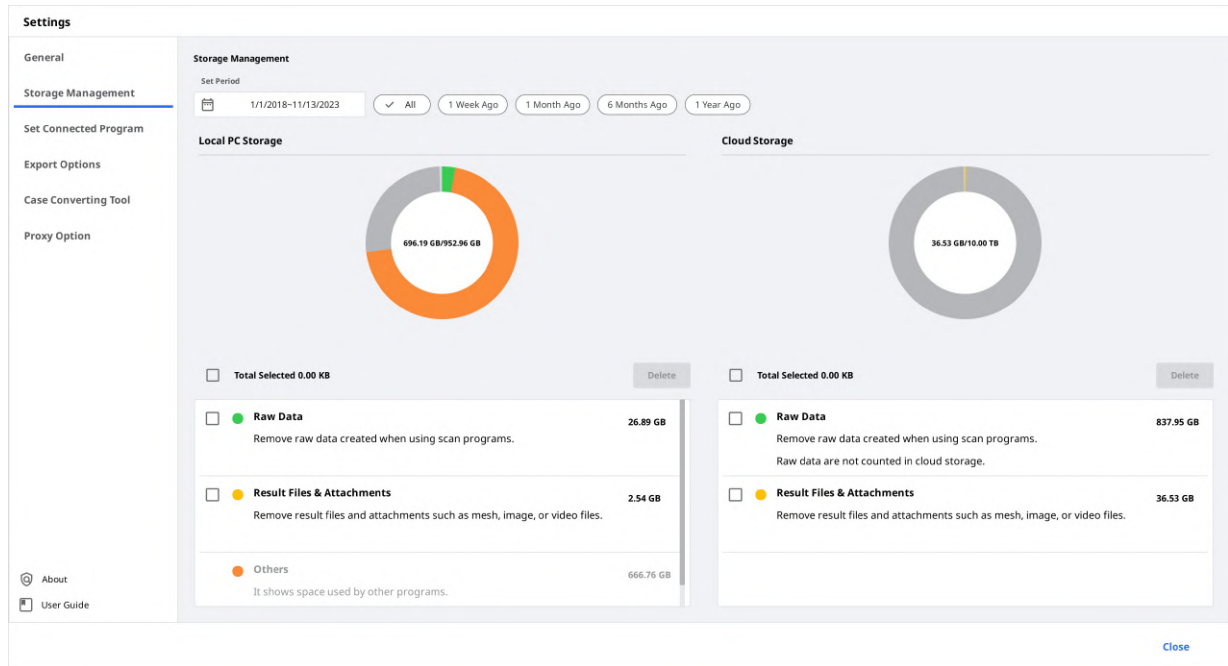

期間の設定

以下の期間設定内で、作成したデータを削除するために特定の期間を設定します。

- すべて: すべてのファイルを表示します。
- 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。
- 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。
- 6か月前: 作成後6か月が経過したファイルを表示します。
- 1年前: 作成後1年が経過したファイルを表示します。

ローカルストレージ

PCストレージスペースを管理します。

RAWデータ	PCから選択したRAWデータを削除します。 すでにRAWデータがクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。
結果ファイルと添付ファイル	PCからメッシュ画像や動画などの結果ファイルや添付ファイルを削除します。 これらのファイルがすでにクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。
その他	システムおよびその他のプログラムを運用するために使用されるファイルを表示します。使用しているPCのストレージを表示します。Medit Linkからこれらのファイルを削除することはできません。
削除	PCから選択したファイルを削除します。

クラウドストレージ

クラウドストレージのスペースを管理します。

RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を保護するために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。
結果&添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
ストレージの購入	2 GB Planをご利用の場合には、10 TB Planのサブスクリプションに登録するとクラウドストレージ量を増やせます。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、ストレージ容量を空けます。

連動プログラムを設定

Medit Linkでの統合をサポートするプログラムを管理します。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

 About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

以下のプログラムを接続できます。

	歯科医院アカウント	技工所アカウント
スキャンプログラム	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

🔍 注意

以下のサービスは、MacOS向けMedit Linkでは利用できません。

- [Medit Scan for Labs](#)

エクスポートオプション

Medit Linkからファイルをエクスポートする方法を設定します。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

タイプ	設計用に使用するCADプログラムを選択します。 プログラムは追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいた結果を調整します。
ファイルのエクスポート先	結果の保存先を指定します。
メッシュ形式	最終のメッシュファイルの形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
圧縮と結合	ファイルの圧縮: すべての結果を一つのファイルに圧縮します。 個々のメッシュデータの結合: 上顎または下顎のすべての結果を一つのファイルに結合します。いくつかのプログラムを使用して複数のファイルでインポートし、作業できない場合、それらを一つに結合し、それらのプログラムで作業ができます。
同じフォルダまたはファイルがすでに存在する場合のオプション	対象の場所に同じフォルダ名またはファイル名が存在する場合、ケースのデフォルト操作を選択します。 - エクスポート時に常に確認する。 - 新規ファイルをエクスポートし、既存のファイルに上書きする。現在保存されているファイルは失われる。 - フォルダを作成してファイルをエクスポートする。
フォルダ名のルール	ファイルのエクスポート時のフォルダ名作成のルールを定義します。 設定されたルールは、フォルダ名に提供され、エクスポートされたファイルは作成されたフォルダに保存されます。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 - 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID - 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID
ファイル名のルール	エクスポートしたファイル名のルールを定義します。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 - 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID - 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID

ケース変換ツール


アカウントの既存のケースをエクスポートまたは他のアカウントからエクスポートされたケースをインポートすることで、異なるアカウント間でケースを移動できます。

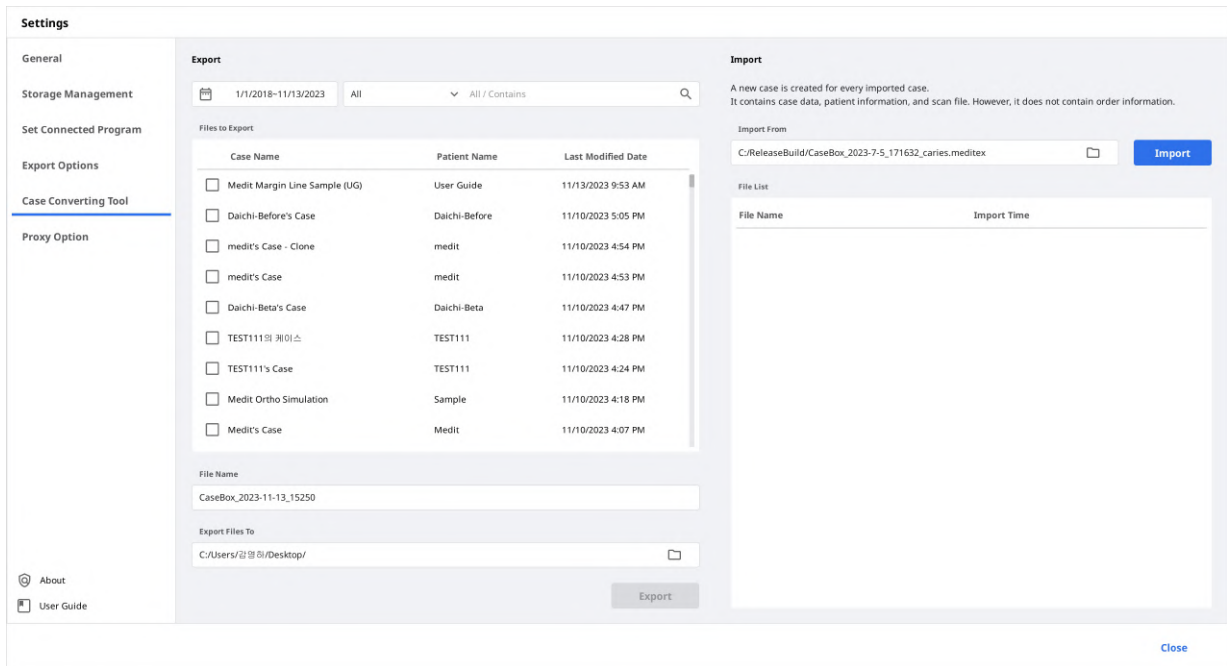


ケースのエクスポート

現在ログインしているアカウントのケースをローカルPCにエクスポートします。


1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

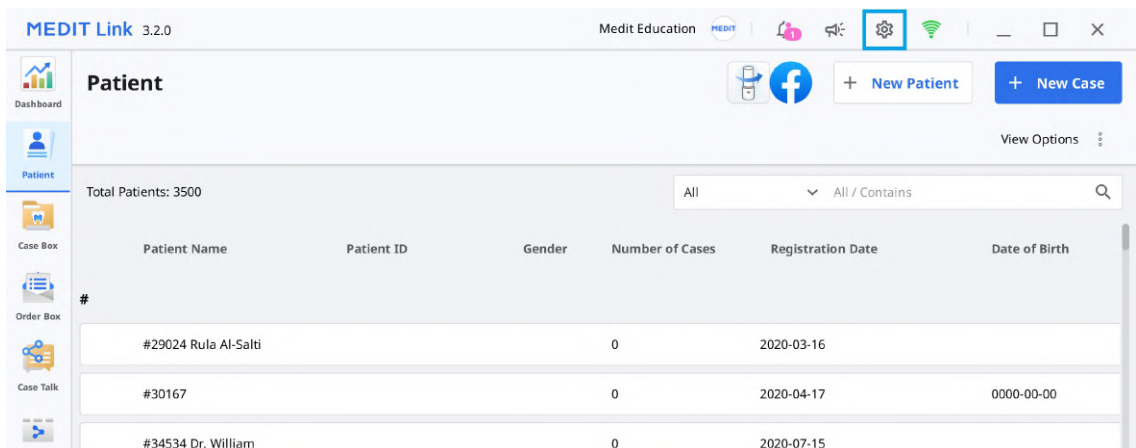

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

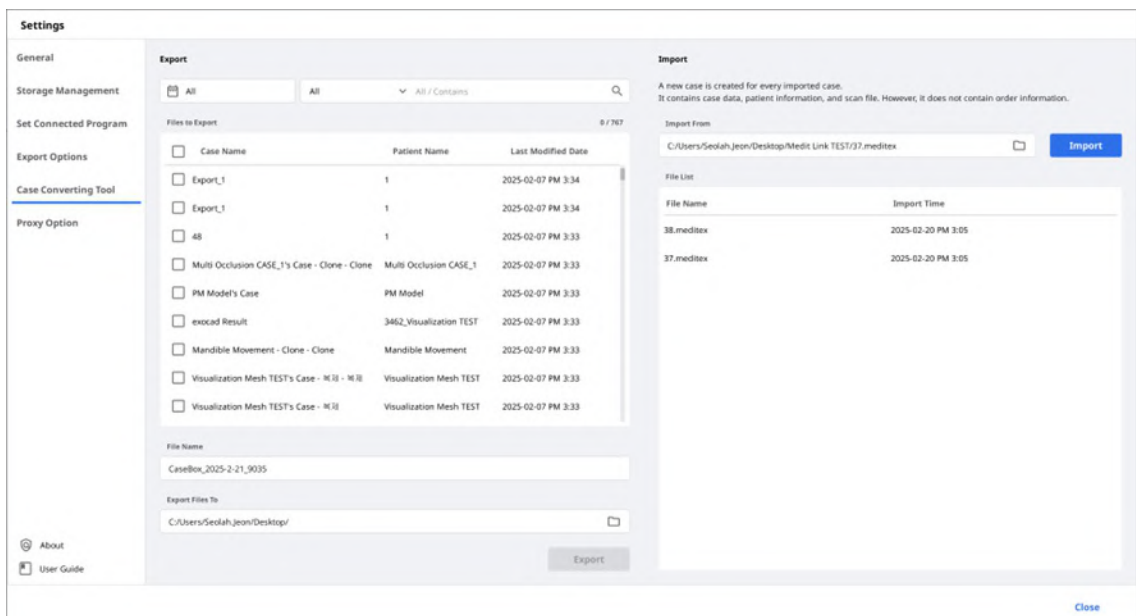


3. エクスポートセクションで、必要があればエクスポートするケースの期間を設定したり、検索したりします。

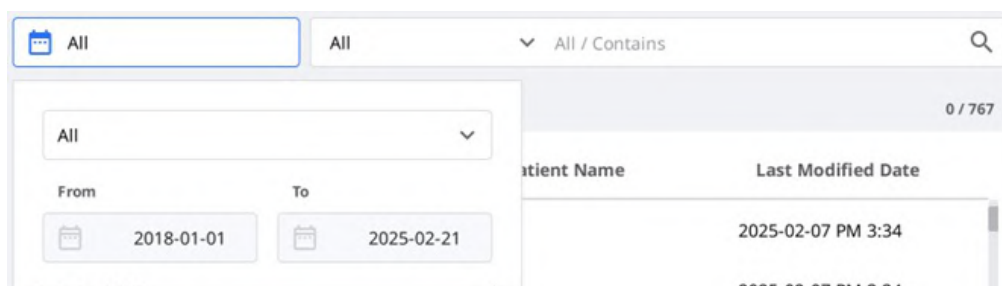

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. 「エクスポートファイル」のリストからエクスポートするケースを選択します。

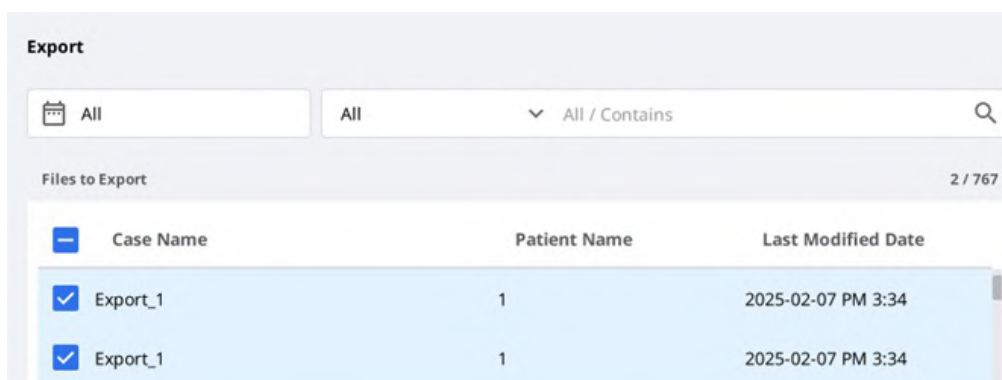

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. ファイル名フィールドのケース名を編集してファイル名を設定します。
6. 選択済みケースをエクスポートする先のフォルダを設定します。
7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックし、ファイルがエクスポートされたフォルダを開きます。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. エクスポートされたケースは、.meditexファイル形式で保存されます。

ケースのインポート


1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

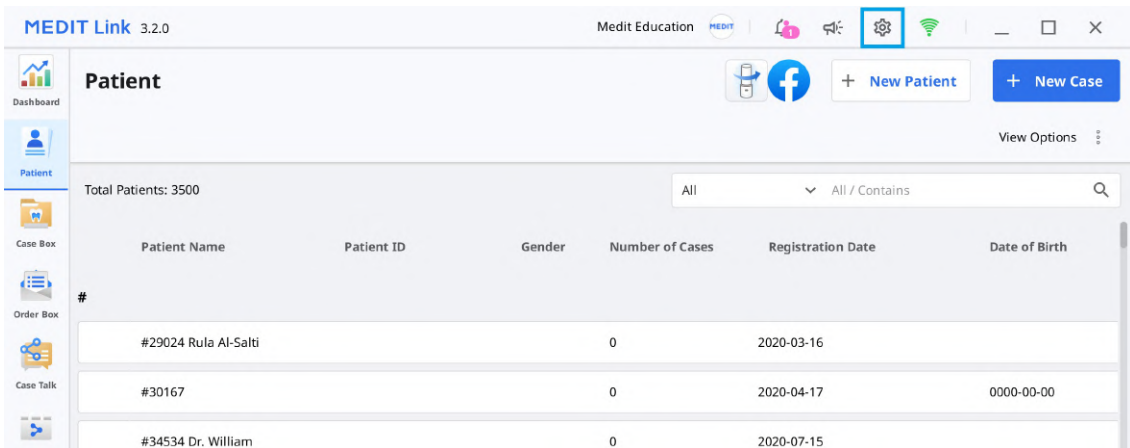

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

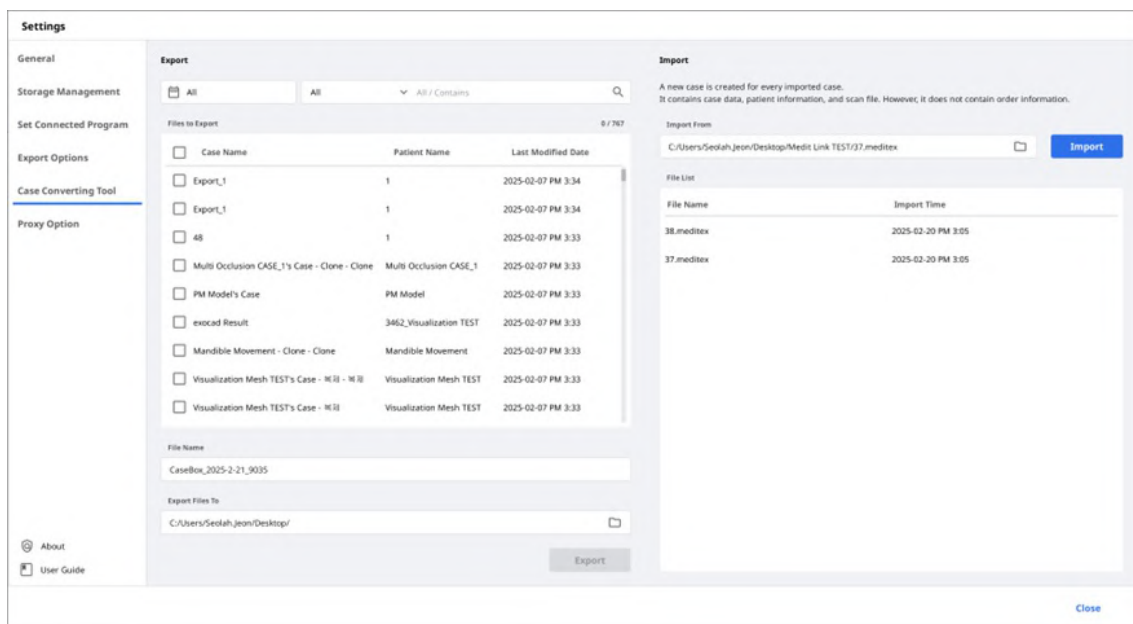

3. インポートセクションで、フォルダアイコンをクリックし、PCでインポートする.meditexファイルを探します。

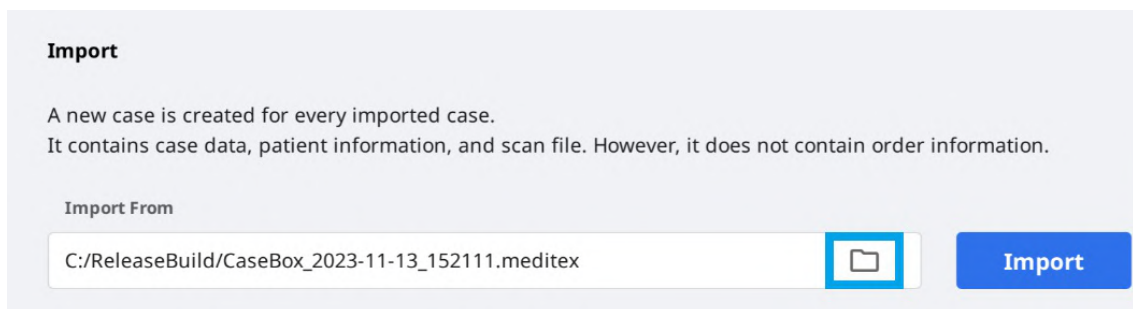

4. 「インポート」ボタンをクリックし、以下のリストでインポートするファイルを確認します。

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. インポートしたケースは、Case Box(歯科医院アカウント)またはWork Box(技工所アカウント)にも表示されます。

プロキシオプション

いくつかの限定的なネットワーク環境では、ネットワーク設定を変更できます。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

[Close](#)

弊社について

Medit Linkに関する詳細情報を表示します。

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

ユーザーガイド


Medit Linkのユーザーガイドを取得します。

ユーザーガイドを開くにはインターネット接続が必要です。

メニュー

Dashboard

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートとして確認できます。

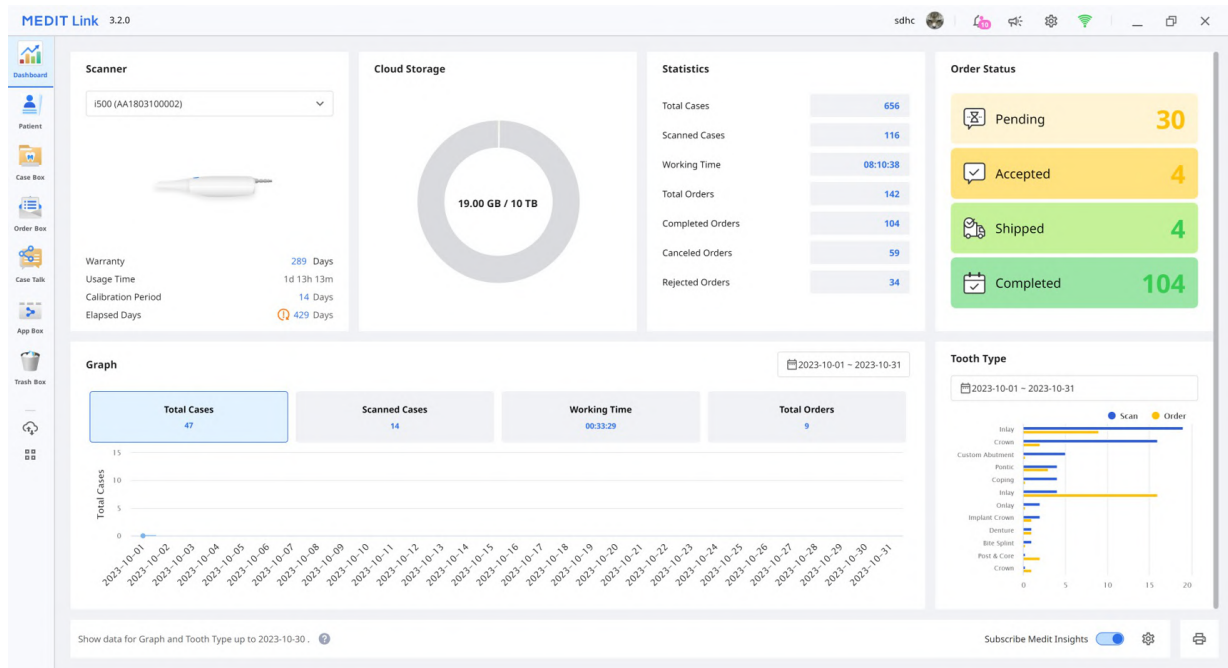


🔍 注意

DashboardおよびMedit Insightsに関する詳細情報については、[Medit Link Web > Dashboard](#)を参照してください。

Patient


Patientメニューで患者を追加、編集、削除、または結合できます。

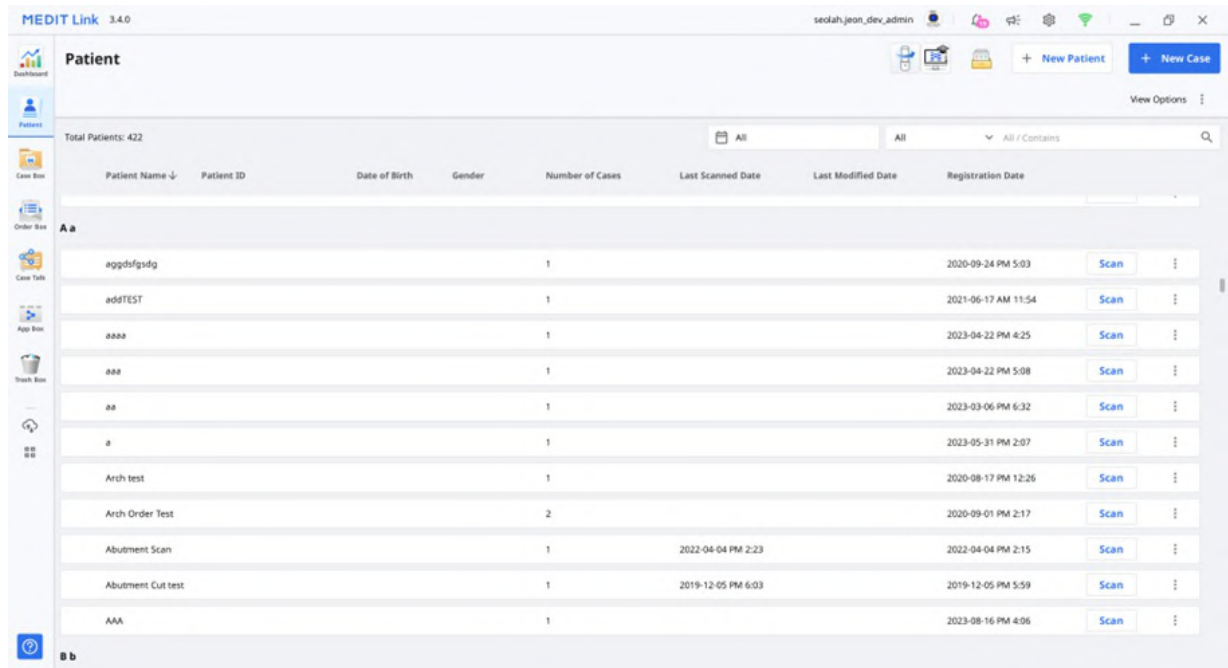

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggdsfgsdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

新規患者の追加

1. 「新規患者」をクリックします。

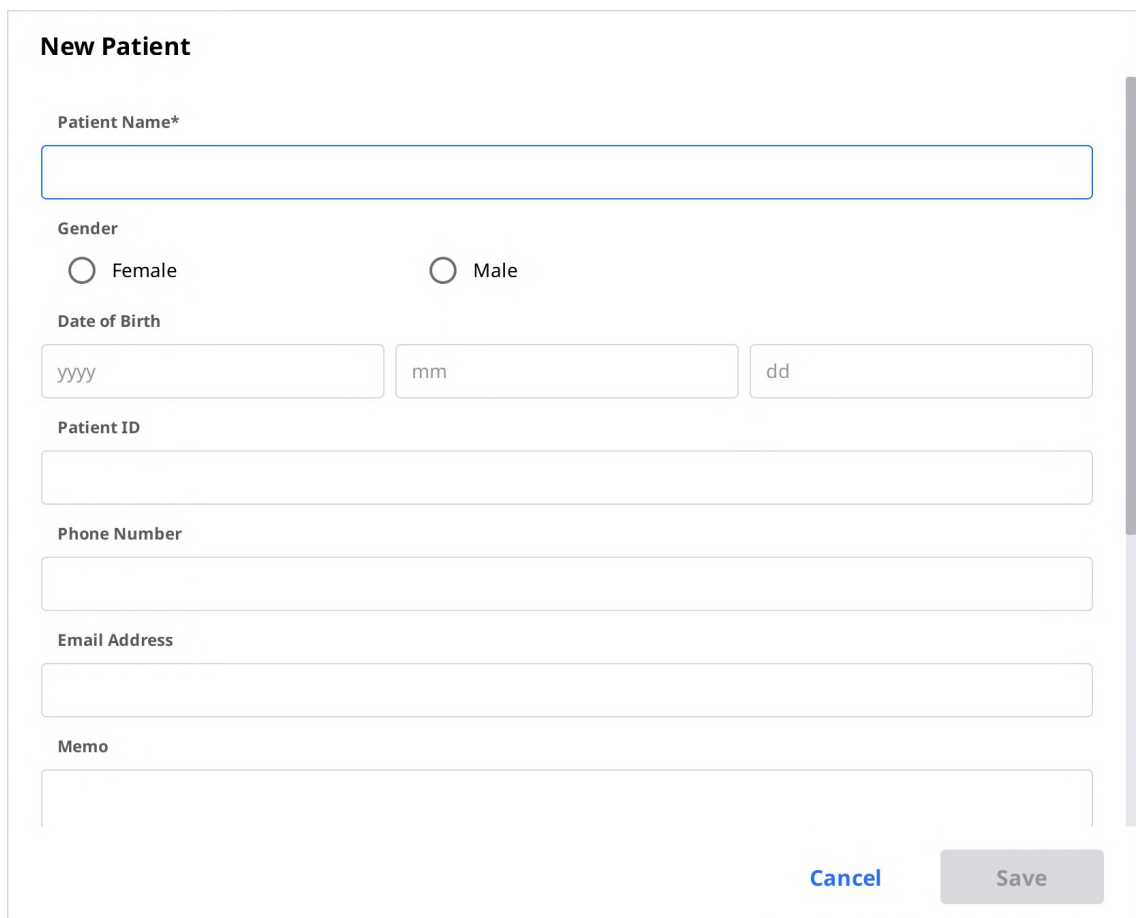

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY MM DD

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. 新規患者ダイアログに必要な情報を入力後、「保存」をクリックします。

患者の削除

注意

該当する患者にケースがない場合には患者のみを削除できます。

1. リストから削除する患者を選択します。

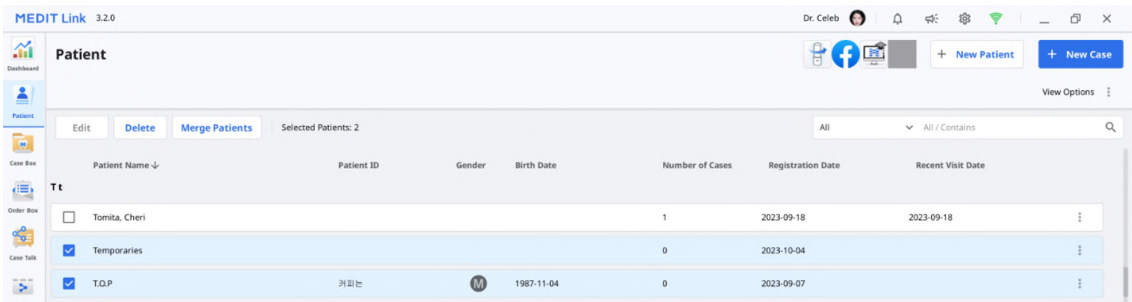


2. 「削除」をクリックします。

患者の結合

複数の患者のすべてのケースを一人の患者に結合できます。

1. リストから結合したい患者を選択します。

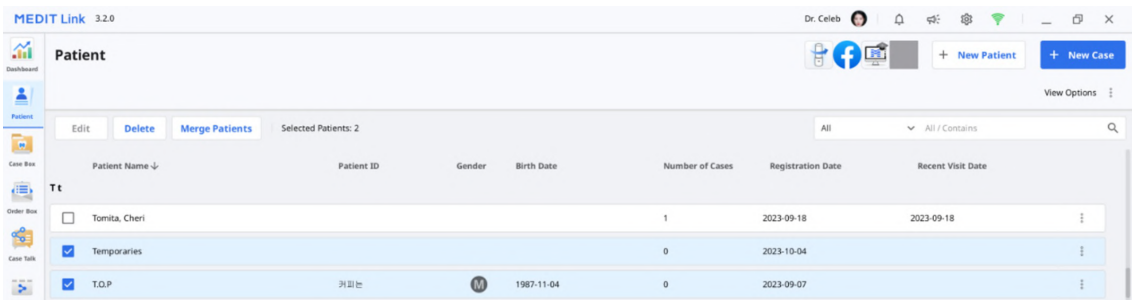

2. 「患者の結合」をクリックします。
3. すべてのケースを結合したい対象の患者を選択します。
4. すべてのケースは対象の患者に結合され、その対象の患者の患者情報は維持されます。

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. 「適用」をクリックして、結合を実行します。

Case Box/Work Box

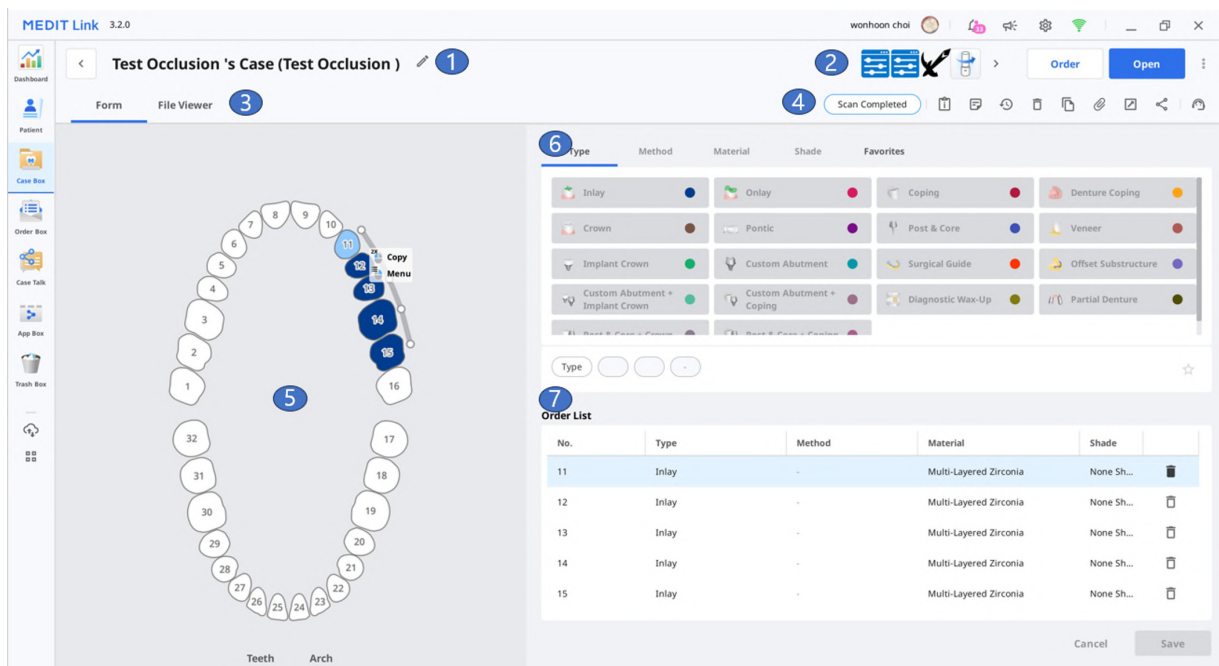

1	ケース名および患者名を表示します。
2	使用可能な主な機能を表示: スキャンまたは開くボタン、注文ボタン、アプリアイコン。
3	使用可能なタブを表示: フォーム、ファイルビューアー。
4	ケースとファイルの管理用機能を表示します。
5	選択したスキャンプログラムのフォーム登録UIを表示。
6	選択した歯番を選ぶためのタイプ/方法/シェード情報を提供します。
7	選択した歯に適用されるタイプ/方法/材料/シェード情報を表示します。

Case Box／Work Box中のタブ

フォーム	ファイルビューアー
フォームタブでは、タイプ、方法、歯番用の材料、スキャンオプション等のスキャン作業に関する基本情報を入力するためのUIを提供します。入力する情報は接続しているスキャンプログラムに送られ、パートナーに発注する際の注文情報として使用されます。	スキャンプログラムとCADが生成した結果ファイルを表示します。ファイルビューアーは、取得または添付されている3Dモデルと2D画像を表示し、管理します。

Case Box／Work Box中のタブ

以下の機能は、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	Order Box/In Boxに移動	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) の同じケースにショートカットを提供します。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモ&タグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	ケース履歴	ケース履歴に関する詳細情報を提供します。 History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	削除	ケースを削除します。 注文済みケースまたはオフラインで作成したケースを削除することはできません。
	複製	Case Boxにある現在のケースの複製を作成します。すべてのデータは複製済みケースにコピーされます。 これは、同じ患者のための治療情報を複製または同じ情報またはファイルを使用して追加の発注をする際に便利な機能です。
	添付	さまざまな形式でファイルを添付します。
	エクスポート	スキャンまたはCAD結果ファイルをローカルPCにエクスポートします。ファイルのエクスポート時には希望するファイル形式を選択できます。 エクスポートされたファイルは、さらに作業を行うためにCADとCAMソフトウェアで使用できます。
	共有	共有するためにリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。 誰とでもまたは特定の人だけと自由にリンクを共有できます。個人情報保護のために、PINコードまたはリンクの有効期限を設定できます。
	技術サポートへの問い合わせ	サポートリクエストを提出するにはヘルプセンターページに移動します。

Order Box/In Box

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The top header displays the case name 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' and a 'Cancel Order' button. The main content area has two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scan Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. A 'Pending' status is shown. The 'File Viewer' tab is also visible, showing a table of order items.

Order List	Shipment		
Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

- 1 ケース名および患者名を表示します。
- 2 注文管理（承認/キャンセル、納品/受領）用の機能を提供します。
- 3 使用可能なタブの表示：注文、ファイルビューアー。
- 4 ケースおよびファイルの管理用の機能を表示します。ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
- 5 注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
- 6 注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。

Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文番号、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ等の注文に関する詳細情報を確認します。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。 ファイルビューアーは取得したまたは添付された3Dモデルや2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有ケースリストを確認できます。



「Case Talk」サービスにはインターネット接続が必要です。

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。

App Box

App Boxでは基本的なスキャンワークフローを補完するさまざまなアドオンプログラムを提供し、効率性を向上させます。歯列矯正器具の作製、スキャンデータの分析、コンサルテーション中の補助、作業手順の効率化をするために指定したアプリをダウンロードしたりインストールできます。

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update](#)
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install](#)
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install](#)
- iie systems connector**: PRIM specialized for orthodontics. [Install](#)
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install](#)
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link. [Install](#)
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS. [Install](#)

すべて


「すべて」タブでは、Meditが開発したオリジナルアプリ(Medit Apps)とPartner Apps(3Dプリント、CAD/CAMソフトウェアなどのデジタル歯科の異なる分野におけるMeditのパートナーと連携するアプリ)など提供しているすべてのアプリのリストを表示しています。

Medit Apps

「Medit Apps」タブはMeditが開発したオリジナルアプリだけのリストを表示しています。

ダウンロード

「ダウンロード」タブは、自分のPCに現在インストールされているアプリとユーザーアカウントでダウンロードされたことのあるアプリのリストを表示しています。

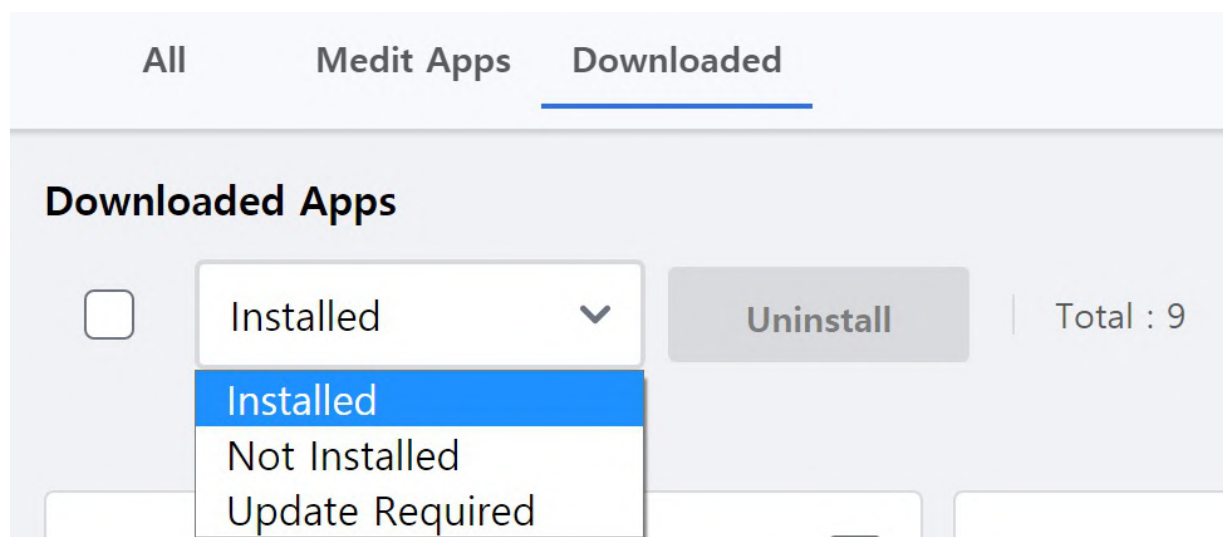

- **インストール済み** : このオプションではユーザーが現在サインインしているPCにインストール済みのアプリだけを表示しています。
- **インストール未了** : このオプションでは他のPCでインストールしたことのあるアプリを表示しているため素早くインストールできるアプリを確認できます。
- **更新要** : このオプションでは、現在使用しているPCにインストール済みで更新が必要なアプリだけを表示しています。

Trash Box

Trash Boxは一時的に削除済みケースを保存します。Trash Boxにあるあらゆるケースは、復元するか、永久に削除が可能です。

⚠ 注意

Trash Boxから削除されたデータは、PCやサーバーから永久に削除され、復元することはできません。

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

▼

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47	2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test	2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test	2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test	2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign	2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign	2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test	2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case	2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case	2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion	2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

케이스同期マネージャー

케이스同期マネージャーを使用すると、ケースのアップロードとダウンロードを効率的に行えます。クラウドに複数のケースをアップロードすることも、PCにダウンロードすることも可能です。同期が必要なケースを探すには、ケースを検索するか、データのフィルタリングを適用するだけです。

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Close

업로드

 Upload	選択したケースをアップロードします。
 Cancel	選択したケースのアップロードをキャンセルします。
 Retry	アップロードに失敗した場合にはケースのアップロードを再試行します。

ダウンロード

 Download	選択したケースをダウンロードします。
 Cancel	選択したケースのダウンロードをキャンセルします。
 Retry	ダウンロードが失敗した場合は、ケースのダウンロードを再試行します。

関連Webサイト

My Info、Partners、MembershipなどMedit Link Webでのみ利用できるメニューに直接移動できます。Medit Link Webメニューの詳しい説明については、Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#)、[Membership](#)、[My Info](#)を参照してください。

Meditのオンラインストア、Medit Shopにアクセスして、スキャナーの保証延長やスキャナーバックパックなどのMedit商品を購入いただけます。

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報も取得できます。Meditヘルプセンター、Medit Academy YouTubeチャンネル、Medit Academyオンライン教育プラットフォーム等Meditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

ファイルビューアー

ファイルビューアーは、Medit Linkにリンクしているプログラムやユーザーが添付したデータから取得したデータを含む、さまざまなデータをグループ化および表示します。



データの表示/非表示、不透明度の調整、データの削除等の基本的な管理機能を提供します。

以下の形式のファイルプレビューをサポートしています。

- 3Dデータ: STL、OBJ、PLY
- 2D画像: PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 動画ファイル: MKV、MP4、AVI、WMV

データツリー

データツリーにあるケースのすべてのデータをグループ化および表示できます。データツリーのデータの表示/非表示、透明度の調整、データの削除もできます。

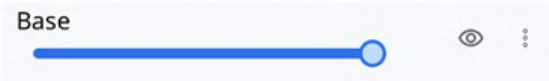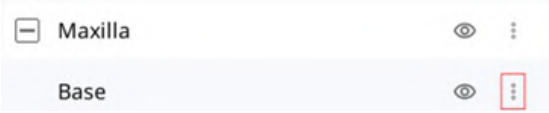
	表示/非表示	データを表示または非表示にできます。
	不透明度	データツリー上のデータの一つをクリックすると、スライダーバーが表示されます。スライダーバーを動かして表示データの不透明度を調整できます。 
	詳細	詳細アイコンをクリックすると、追加で使用可能な機能が表示されます。  • このみを表示: 対応するデータのみを表示し、その他のすべてのデータを非表示にします。 • 非表示: データを非表示にします。 • 複製: データをコピーし、添付されているグループに追加します。 • エクスポート: 選択したファイルをエクスポートします。 • 名前の変更: データ名を変更します。 • 削除: データを削除します。



注意

オンライン時にデータ名の変更ができます。

模型コントロールツール

3D模型のコントロール

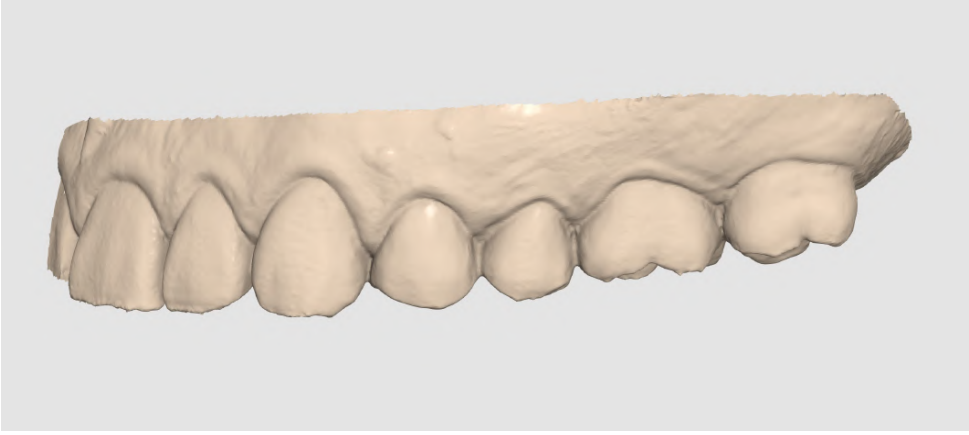+	パン	模型を移動します。
↻	回転	模型を回転させます。
🔍	拡大/縮小	模型を拡大/縮小します。
🔍	ズームフィット	画面中央に模型を配置します。
  	データ表示モード	光沢あり 
		光沢なし 
		モノクロ 

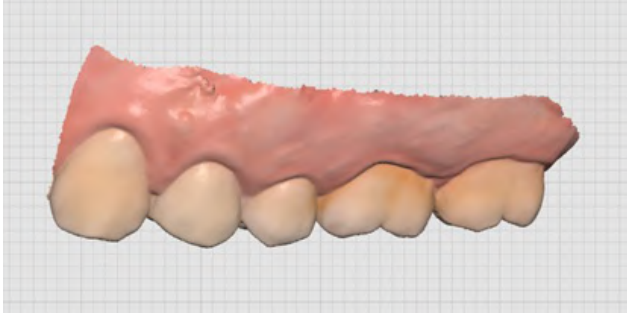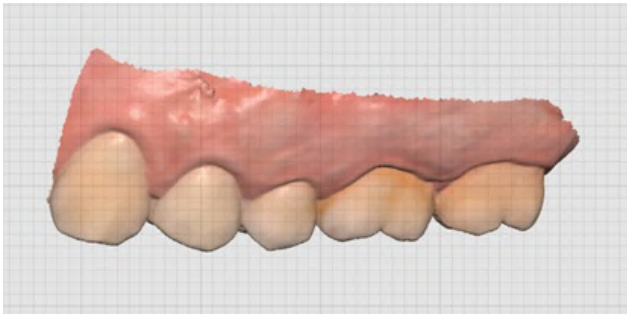	グリッド設定 (mm)	グリッドオン	背景にグリッドを表示します。 
		グリッドオフ	背景のグリッドを非表示にします。
		オーバーレイオン	模型上にグリッドをオーバーレイします。 

2D画像コントロール


	次/前の画像	画像間で移動します。
	編集	画像を編集します。
	画面の切り離し/貼付け	画像画面を切り離し、希望する位置に画像を調整できます。画面のサイズを変更できます。 画面がオリジナルの場所に戻ると、デフォルトサイズになります。

機能ツール

画像撮影とメモ


現在の画面を2D画像で撮影し、そこに描いたり、メモを追加します。


メモ付きのファイルを保存し、参照として送信できます。

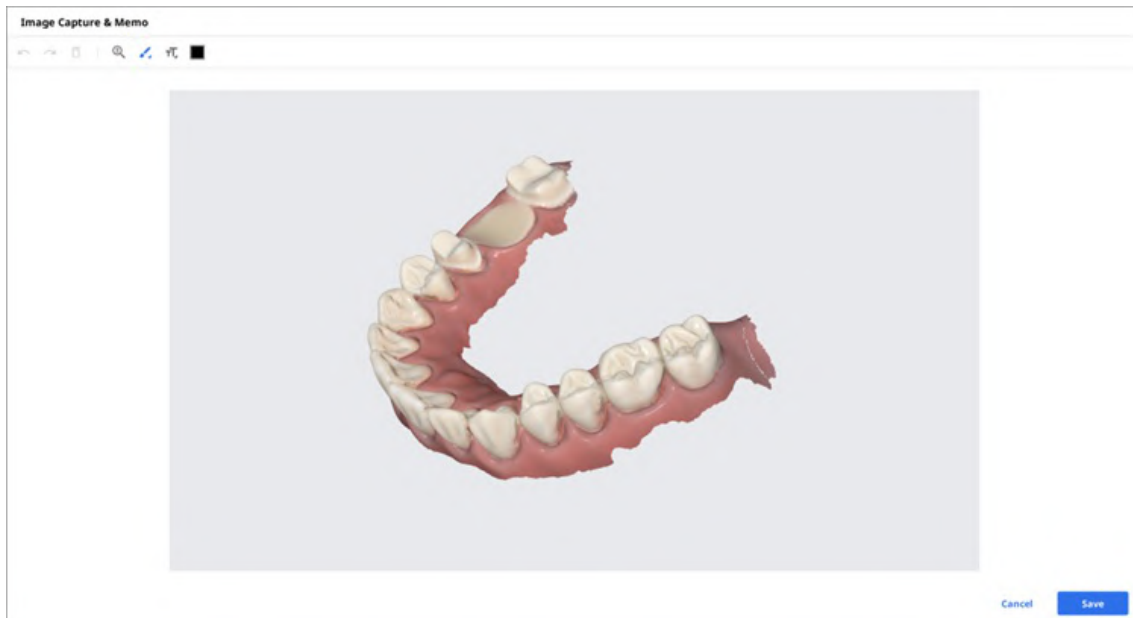

矯正撮影

現在の視線方向および現在の視線方向から上/下/左/右の画像を撮影します。

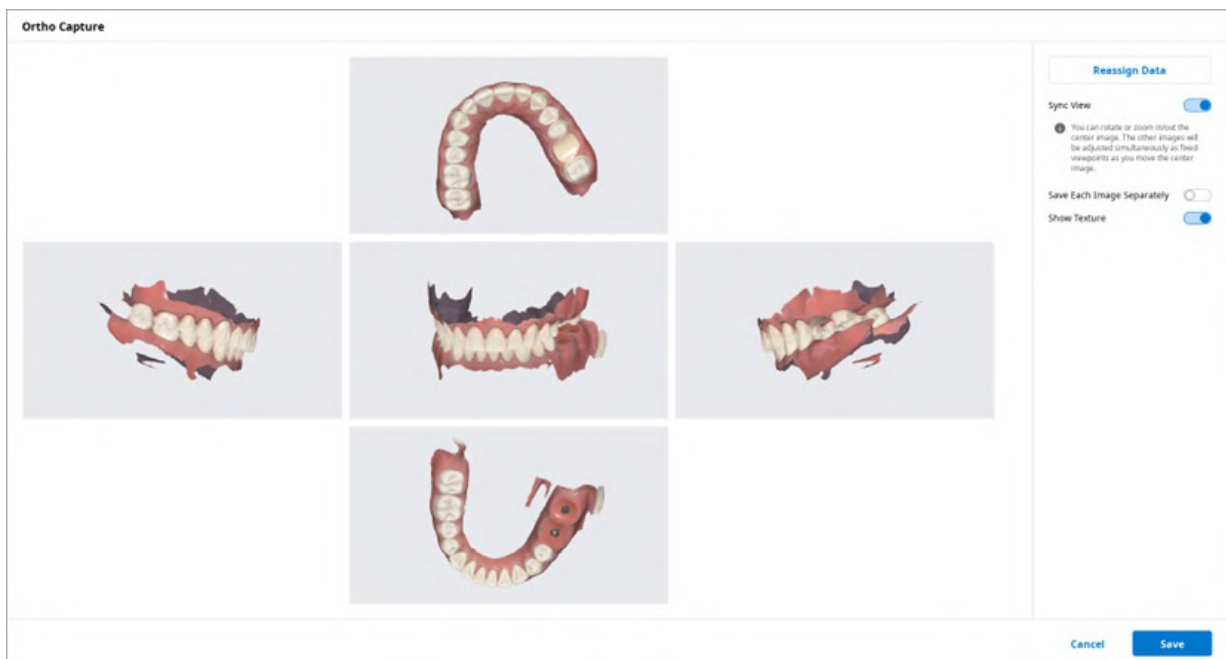

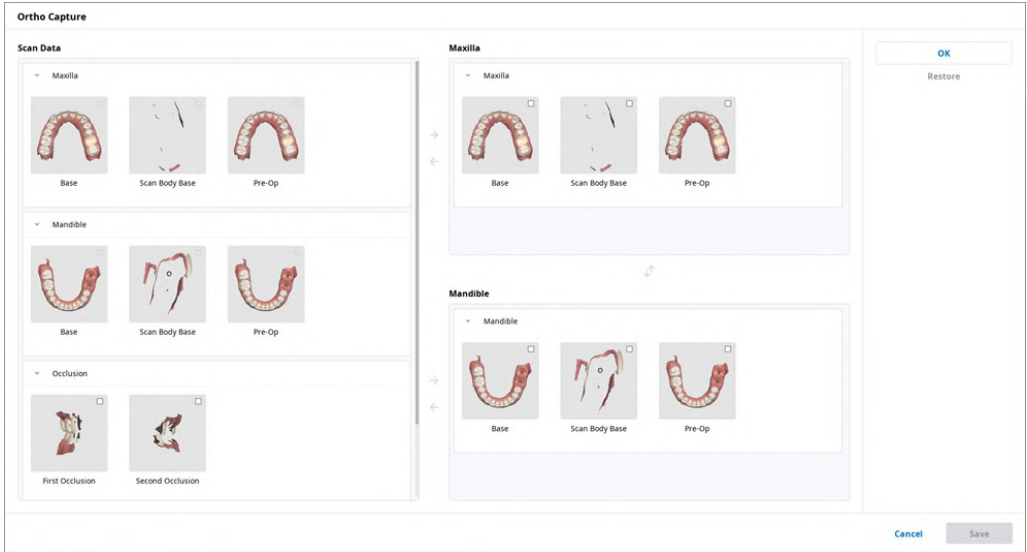ビューの同期	オンの場合、中央の画像を回転または拡大/縮小できます。その他の画像は、中央の画像を動かしながら固定した視点として同時に調整されます。 オフの場合、すべての画像を個別にパン、回転、または拡大/縮小できます。
各画像を個別に保存	各画像を高解像度で保存します。
テクスチャを表示	模型のテクスチャをオン/オフにします。
データの再割り当て	データの再割り当て機能で上顎/下顎のデータを変更します。変更したデータを使用して、矯正撮影の結果画像を作成し、活用できます。  ● スキャンデータ: ケースのスキャンデータをすべて表示します。 ● 上顎: 上顎の選択したデータが表示されます。 ● 下顎: 下顎の選択したデータが表示されます。


穴の充填

3Dメッシュデータで歯牙を充填します。



トリミング


トリミングでは、データを編集するさまざまなツールを提供しています。

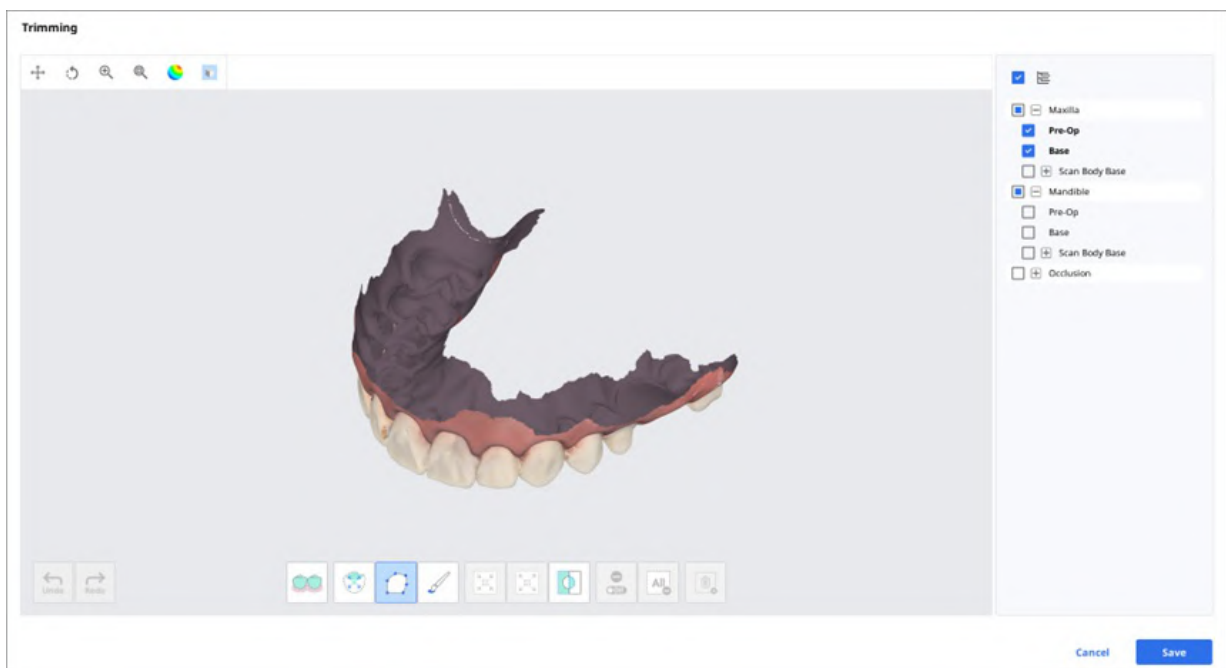

選択した3Dメッシュデータは、画面下部にあるさまざまなツールを使用して編集できます。

選択		スマートティース 選択	歯肉部分以外の歯列弓/アーチの歯全てを自動で選択します。  注意 この機能は「GPU利用」オプションがオンになっているMedit Scan for Clinicsを使用して取得したスキャンデータでのみ利用できます。
		スマートシングル トゥース選択	1回クリックして、1本の歯の領域を自動選択します。歯をクリックまたはドラッグできます。
		多角形選択	画面上で描いた多角形内のすべてのものを選択します。
		ブラシ選択	画面上に手書きで描かれたパス上のすべてのものを選択します。前面のみが選択されます。ブラシは異なる3つのサイズがあります。
選択領域の調整		選択領域の縮小	ボタンを押すたびに選択領域が縮小されます。
		選択した領域を拡大	ボタンを押すたびに、選択領域が拡大されます。
		選択済み領域を反転	選択領域を反転します。
選択解除		選択/選択解除	オンの場合、様々なツールを使い、選択を解除します。
		すべての選択を消去	すべての選択領域を解除します。
		選択済み領域を削除	選択領域からデータを削除します。

1. 領域選択ツールでトリミングする領域を選択します。

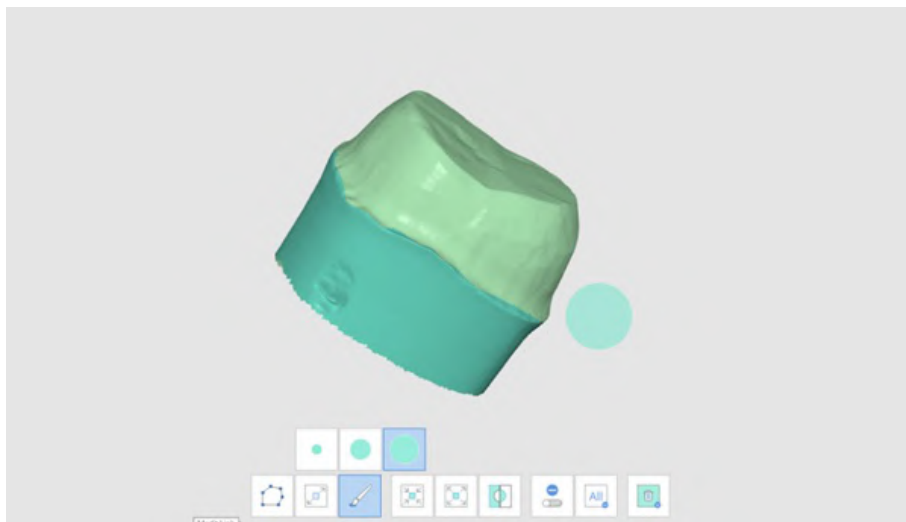


注意


多角形トリミングツールで画面以上に描かれた多角形内にあるすべてのものを選択でき、ブラシトリミングツールで顔の正面のデータのみを選択できます。

2. 以下の3つのツールを使用して選択を反転、縮小または拡大できます。


- 選択した領域を反転

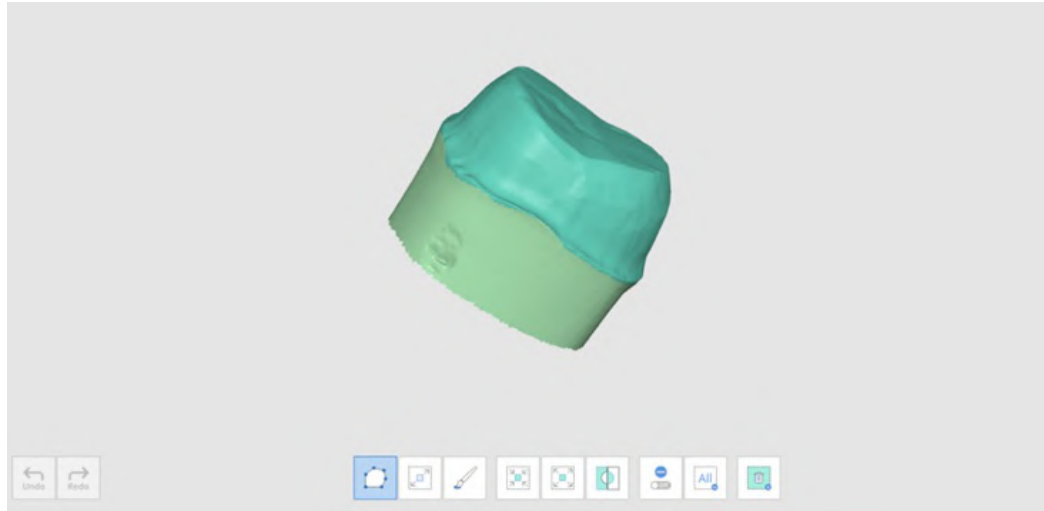

- 選択領域の縮小

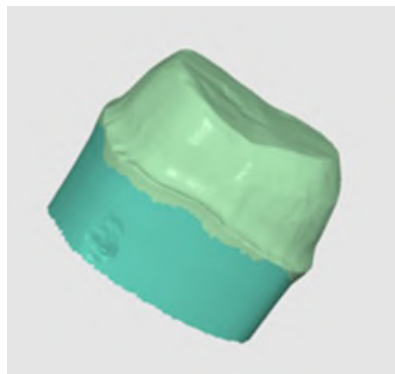


- 選択した領域を開く

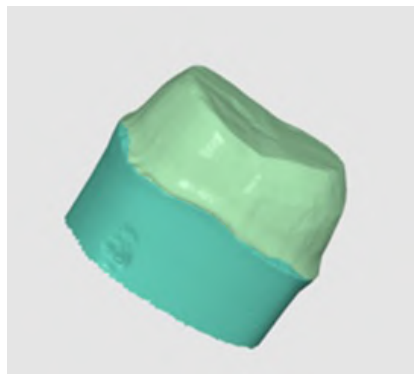


3. 選択領域削除ツールを使用して選択領域の選択解除ができます。


咬合アライメントの最適化

咬合整列を最適化します。対象データを選択し、咬合整列を調整できます。

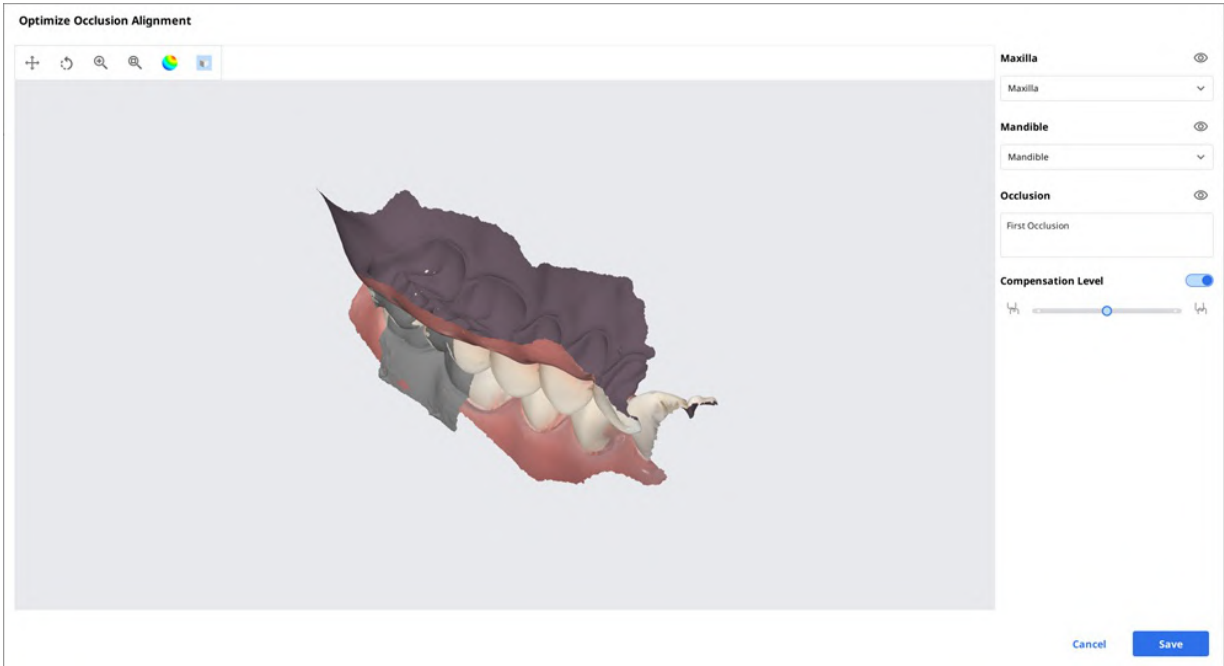


補正レベル

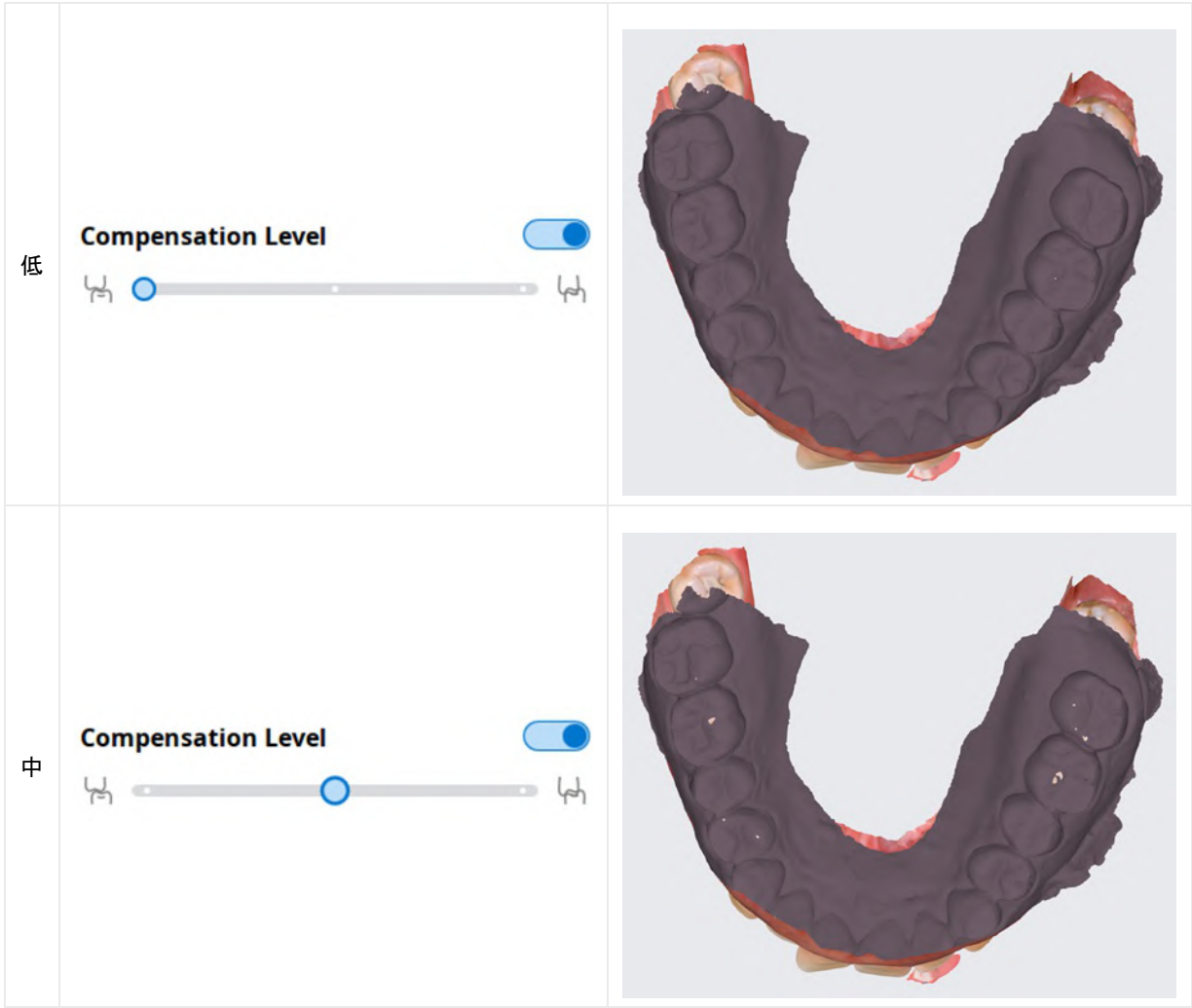

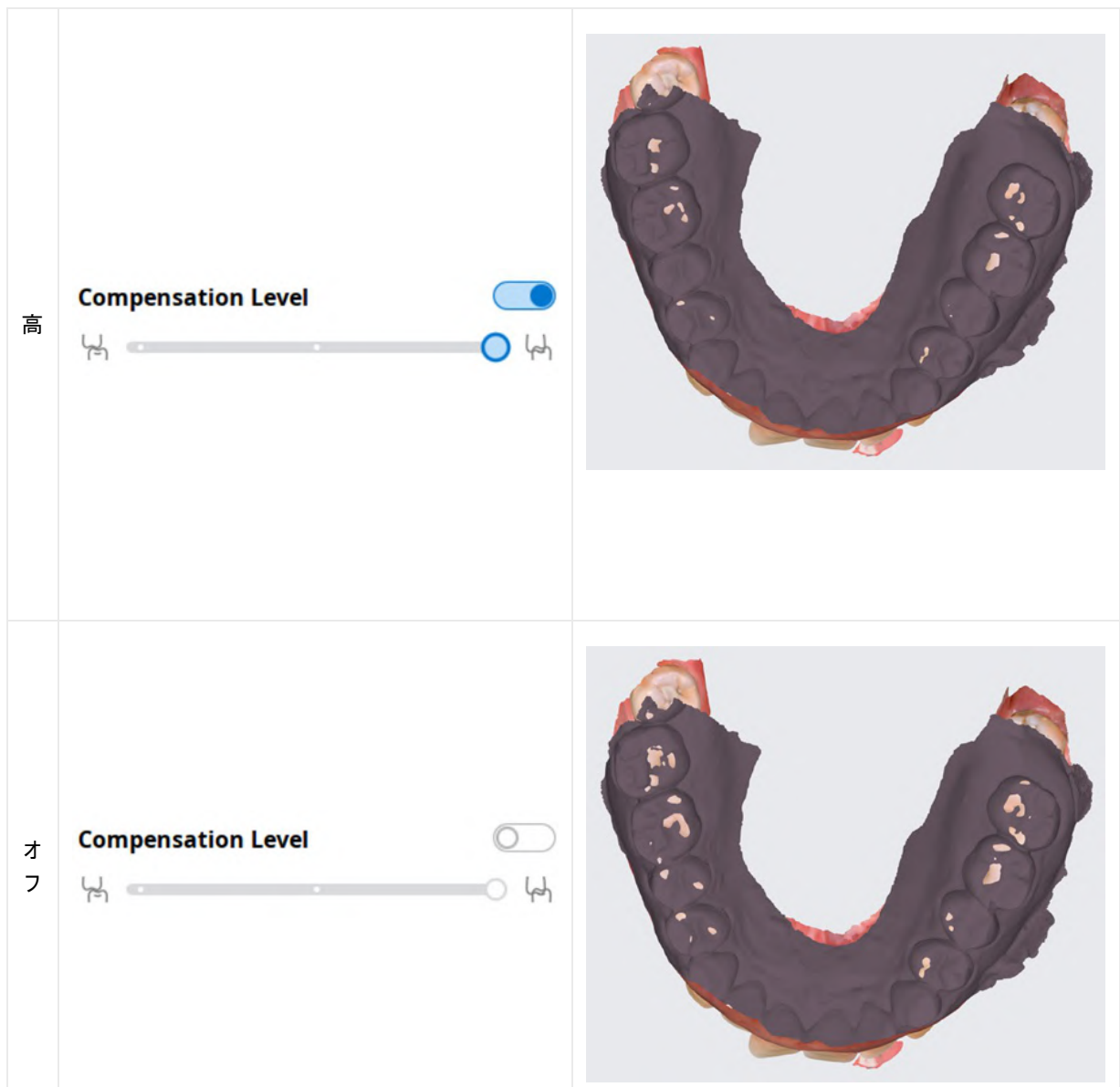

下顎運動

Medit Scan for Clinicsで録画された下顎運動を再生し、上下の歯列間の動的な咬合の当たり具合を確認できます。

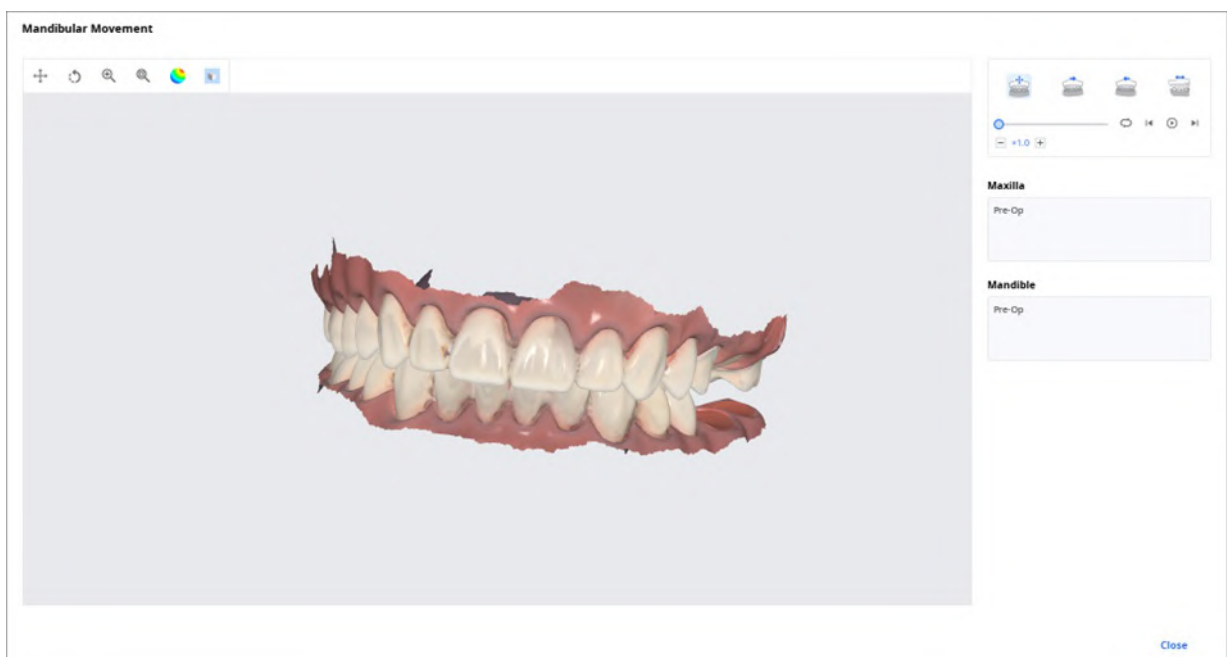

	自由運動	下顎の自由運動の録画を再生します。
	左水平運動	下顎の左への運動の録画を再生します。
	右水平運動	下顎の右への運動の録画を再生します。
	前方運動	下顎の前方運動の録画を再生します。

ファイルビューアーの複数の咬合データの管理

Meditスキャンアプリケーションから複数の咬合データ結果を取得できます。

Medit Linkは、「ファイルビューアー」を通しての結果を管理できる機能を提供しています。

複数の結果の管理方法


Medit Scan for Clinicsから複数の咬合結果を取得時に、Medit Linkは結果を選択できるオプションを提供しています。

結果リストは、名前別にリストアップされ、一つの項目を選択できます。

選択したモデルは、「データツリー」および「モデル表示領域」で表示されます。



リストを折りたたみ、矢印アイコンを使用して項目を変更できます。

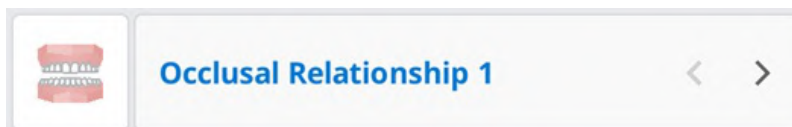

表示オプション

表示オプションを変更して、Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box内のケースリストのレイアウトをカスタマイズできます。

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

ステータスフィルター

ケースのステータスを表す各フィルターを表示または非表示にします。非表示ステータスフィルターでは、Case Box/Work Box/In Box/Order Box中で画面に表示されません。

ステータスフィルターを使うと必要なケースを簡単に探すことができます。

- 表示したいステータスをクリックして、そのステータスのケースのみを表示できます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

各Boxでは、以下のフィルタリングオプションを利用できます。

Box	ステータスフィルター
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

表の項目

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box中のケースリストに表示する項目を選択します。ユーザーが見やすいように、リスト表示の表の項目順を変更または表の幅を調整できます。

各Boxでは、以下の表の項目を利用できます。

Box	表の項目
Patient	患者名 / 患者ID / 性別 / ケース数 / 登録日 / 生年月日 / 最終スキャン日
Case Box	ステータス/ケース名/生年月日/フォーム情報/最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
Order Box	ステータス/ケース名/患者名/スキャン日/注文日/技工所名/配送希望日/最終変更日
In Box	ステータス/ケース名/注文日/配送希望日/最終変更日/歯科医院名
Work Box	ステータス/ケース名/患者名/フォーム情報/最終変更日/配送希望日/スキャン日/歯科医院名/注文日

表示タイプ

Case Boxでの表示タイプをギャラリー表示とリスト表示間で変更します。

各Boxでは、以下の表示タイプオプションを利用できます。

Box	表示タイプオプション
Patient	リスト表示
Case Box	リスト表示/ギャラリー表示
Order Box	リスト表示
In Box	リスト表示
Work Box	リスト表示

グループ化

グループ化オプションを選択し、選択したオプションでリスト内のケースを分類し、並び替えます。

各Boxでは、以下のグループ化オプションが利用できます。

Box	グループオプション
Case Box	なし/患者名/スキャン日/注文日
Order Box	なし/スキャン日/注文日/配送希望日
In Box	なし/注文日/配送希望日
Work Box	なし/配送希望日

注意

グループオプションは、Patient、Case Talk、Trash Boxでは利用できません。

並び替え

並び替えオプションを選択して、選択したオプションに従ってリスト内のケース順を変更します。

各Boxでは、以下の並び替えオプションが利用できます。

Box	グループ化	並び替えオプション
Patient	-	患者名 / 患者ID / 生年月日 / 登録日 / ケース数 / 最終スキャン日
Case Box	なし	患者名/最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	患者名	最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	スキャン日	患者名/最終変更日/注文日/技工所名
	注文日	患者名/最終変更日/スキャン日/技工所名
Order Box	なし	患者名/スキャン日/注文日/配送希望日/技工所名
	スキャン日	患者名/注文日/配送希望日/技工所名
	注文日	患者名/スキャン日/配送希望日/技工所名
	配送希望日	患者名/スキャン日/注文日/技工所名
In Box	なし	患者名/注文日/納品希望日/歯科医院名
	注文日	患者名/スキャン日/配送希望日/歯科医院名
	納品希望日	患者名/注文日/歯科医院名
Work Box	なし	患者名/最終変更日/納品希望日/歯科医院名
	納品希望日	患者名/最終変更日/歯科医院名


注意

並び替えオプションはCase TalkとTrash Boxでは利用できません。

フィルタリングと検索


患者別フィルタリング

患者名別にケースをフィルタリングし、表示します。作業する必要がある患者のみをフィルタリングしてリストを作成できます。

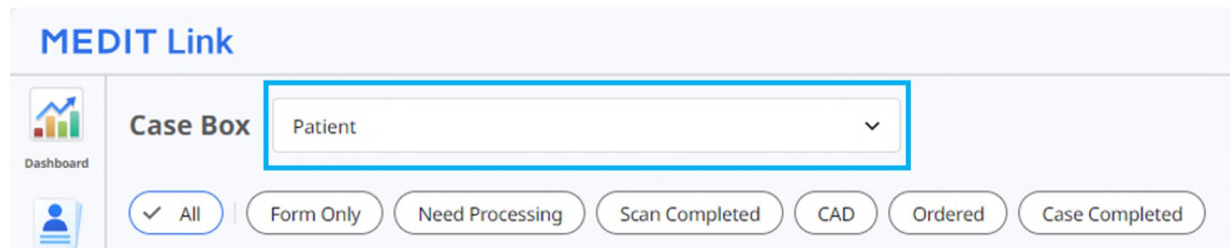

The screenshot shows the MEDIT Link interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user icon. The main area has a 'Case Box' dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 患者の名前を入力します。

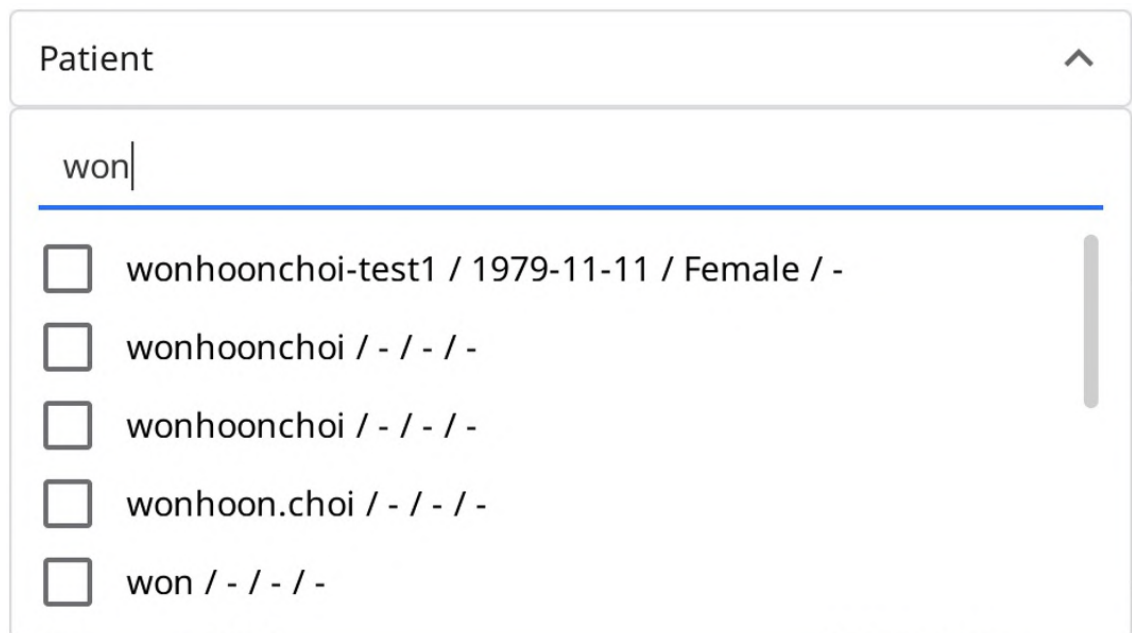

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' filter. The search input field contains 'won'. Below the input, there is a list of search results, each preceded by a checkbox:

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 以下の検索結果から患者を選択します。

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されます。

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Chai Clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

日付別フィルタリング

設定期間内での最終修正日別でケースをフィルタリングし、表示します。

1. 期間フィルタリングをクリックします。

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. リストから期間を選択します。

- すべて: すべてのケースを表示します。
- カスタム範囲: 開始日と終了日を指定して、期間内でのケースの最終修正日別に表示します。
- 今日: 今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日: 昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間: 今日を除く過去7日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間: 今日を除く過去30日間が最終修正日のケースを表示します。
- 今月: 今月が最終修正日のケースを表示します。
- 先月: 先月が最終修正日のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。

詳細検索機能

検索機能を利用して、必要な情報を迅速に検索します。

All

▼

Search / Contains

Q

以下の検索条件が各Boxで利用できます。

Patient	すべて、患者名、患者ID
Case Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、フォーム情報、技工所名
Order Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、技工所名、注文ID
In Box	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、注文ID
Work Box	すべて、ケース名、患者名、フォーム情報、歯科医院名、注文ID
Case Talk	Case Talk名 (含む)、患者名 (等しい)
Trash Box(歯科医院)	すべて、ケース名、患者名、技工所名、削除者
Trash Box(技工所)	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、削除者

検索条件を選択し、「含む」および「等しい」条件指定で選択できます。

All

▼

All / Contains

Q

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

ケースの作成／編集／複製／削除

ケースの作成

Case Box(歯科医院)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

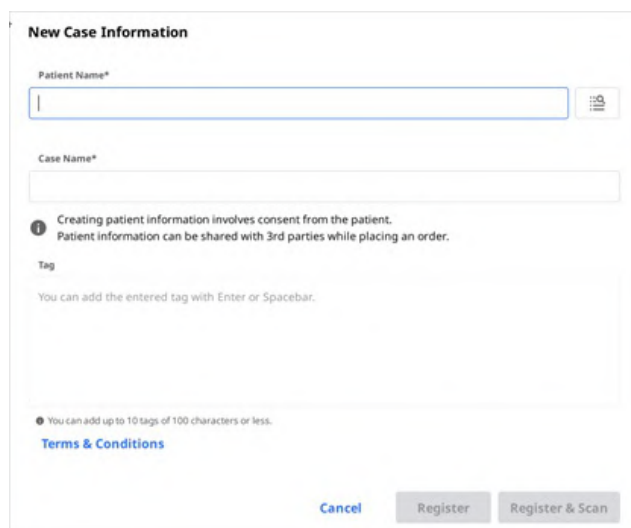


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with a hint "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: A note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less." and a link "Terms & Conditions".
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. 患者名やケース名などの基本情報を入力します。
 - 患者リストにない名前を入力する場合、新規患者として追加されます。
 - 患者リストにある名前を入力する場合、リストから名前を選択できます。
 - 既存の患者のケースを登録する場合、患者リストアイコンをクリックし、既存の患者を選択します。



- 患者リストダイアログで、新規患者を登録または既存の患者に関する情報を編集できます。

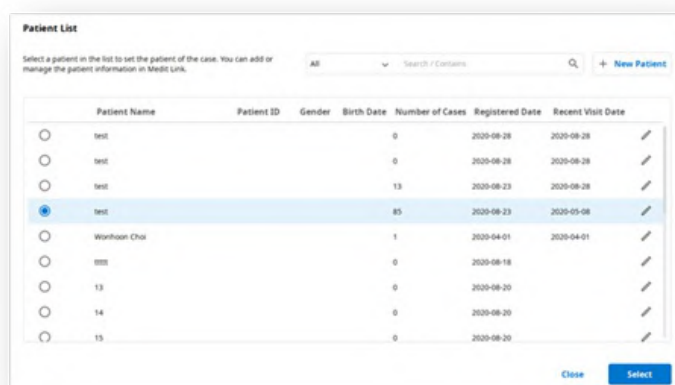


The "Patient List" dialog shows a table of existing patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. A search bar and a "+ New Patient" button are at the top right.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-06-28	2020-06-28	
☐	test				0	2020-06-28	2020-06-28	
☐	test				13	2020-06-23	2020-06-28	
☒	test				85	2020-06-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-06-18		
☐	13				0	2020-06-20		
☐	14				0	2020-06-20		
☐	15				0	2020-06-20		

3. ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 「登録&スキャン」をクリックし、ケース登録を完了し、すぐにスキャンに進みます。
 - 登録: メインページにリダイレクトされます。これは複数のケースを登録する場合に便利です。
 - 登録&スキャン: フォームタブに移動し、ケースのフォーム情報を登録します。

Work Box(技工所)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

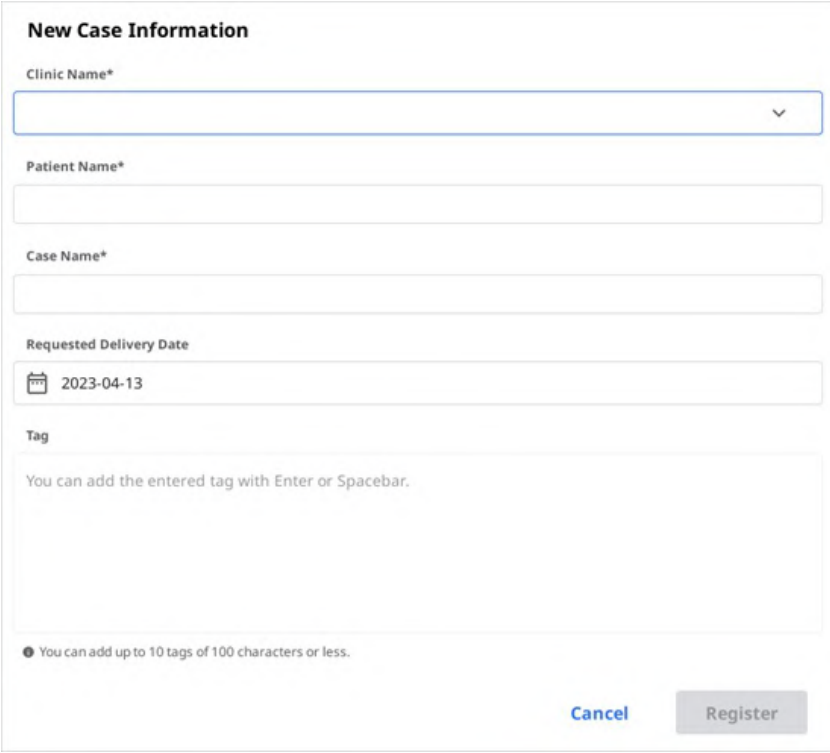

The form is titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:


- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow on the right.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note at the bottom: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (blue text) and "Register" (grey button).

2. 歯科医院名を入力または選択します。
3. 患者名とケース名を入力します。ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 作業の完了日を考慮して納品予定日を入力します。
5. ケースを登録後、メインページにリダイレクトされます。

ケースの編集

Case Box (歯科医院) でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

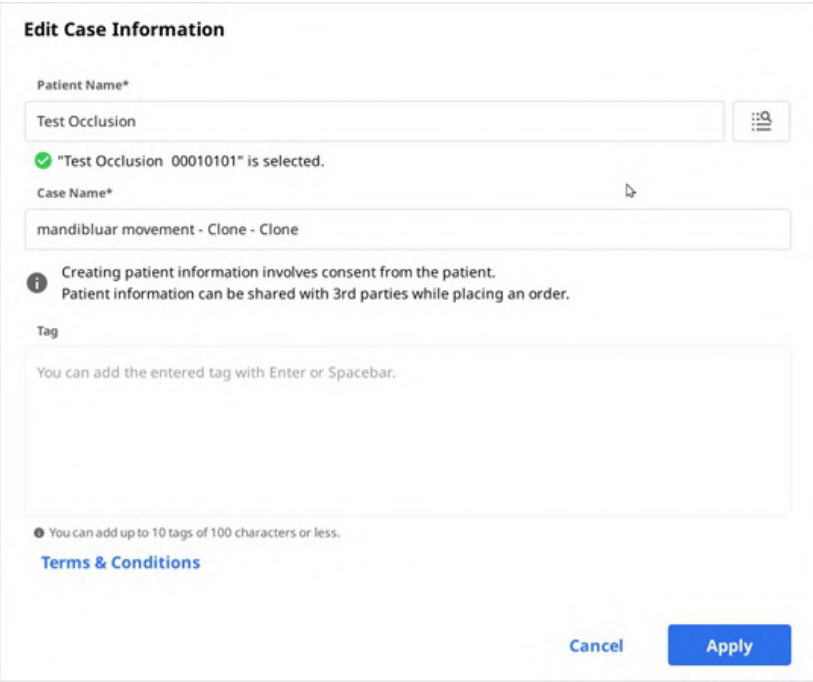

The form is titled "Edit Case Information". It contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field containing "Test Occlusion". To the right of the field is a menu icon (three horizontal lines).
- A green checkmark icon followed by the text: "Test Occlusion 00010101" is selected.
- Case Name***: A text input field containing "mandibluar movement - Clone - Clone".
- An information icon (i) followed by the text: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note at the bottom: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- A link labeled "Terms & Conditions" in blue text.
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (blue text) and "Apply" (blue button).

2. 「検索」アイコンをクリックして、患者名を変更します。直接編集できないことにご注意ください。その代わり、現在の名前を入れ替えたい患者名を探し、リストから患者情報を編集できます。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	Edit
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	Edit
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	Edit
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	Edit
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	Edit
☐	ttttt				0	2020-08-18		Edit
☒	13				0	2020-08-20		Edit
☐	14				0	2020-08-20		Edit
☐	15				0	2020-08-20		Edit

3. 現在の名前を置き換えたい患者名を確認します。
4. 新規患者を作成するために、「新規患者」ボタンを押します。
5. 「編集」ボタンを使用して、患者に関する登録情報を変更します。
6. 「適用」をクリックして、プロセスを終了します。

Work Box(技工所)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

2. 編集完了後に「適用」をクリックします。

注意

In Boxの注文を通して受領したケースの情報を編集することはできません。

ケースの複製

Case Box(歯科医院)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. 新規ケースに複製したい情報の種類を求められます。

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. フォーム情報だけ、またはすべてのデータを複製するかどうかを選択します。
4. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。

Work Box(技工所)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. すべてのデータを複製して、新規ケースを作成します。
3. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。

ケースの削除

ケースの削除(歯科医院および技工所)

1. 「削除」アイコンをクリックします。



2. 「OK」をクリックして、ケースを削除します。

Warning
 Do you want to delete the case?

Cancel OK

3. 削除されたケースは、Trash Boxに移動し、必要があれば取り戻せます。

フォーム情報

接続しているプログラムおよび治療タイプに基づきフォーム情報を入力できます。

入力する情報は、スキャンまたはCADプログラムでの作業および注文のための基本情報として使用されます。

Case Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 歯または歯列弓/アーチでの治療情報のどちらを入力するか選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シールドを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
3. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

Work Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力


1. 使用するスキャンプログラムを選択します。
2. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
3. 選択したスキャンプログラムにより方法が異なる可能性があります。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
歯	O	O
歯列弓/アーチ	O	O
フレキシブルマルチダイ	X	O
マルチダイ	X	O

4. スキャンプロセス用の歯、歯列弓/アーチ、またはダイ番号を選択します。
5. タイプ – 方法 – 材料 – シールドを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、自動的にリストに登録されます。
6. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

歯をブリッジにつなぐ

同じ材料が複数の隣に歯に適用されている場合には、複数の歯をブリッジにつなげることができます。選択した歯のそばにあるブリッジアイコンをクリックし、歯をつなげるまたはつなげないを選択できます。

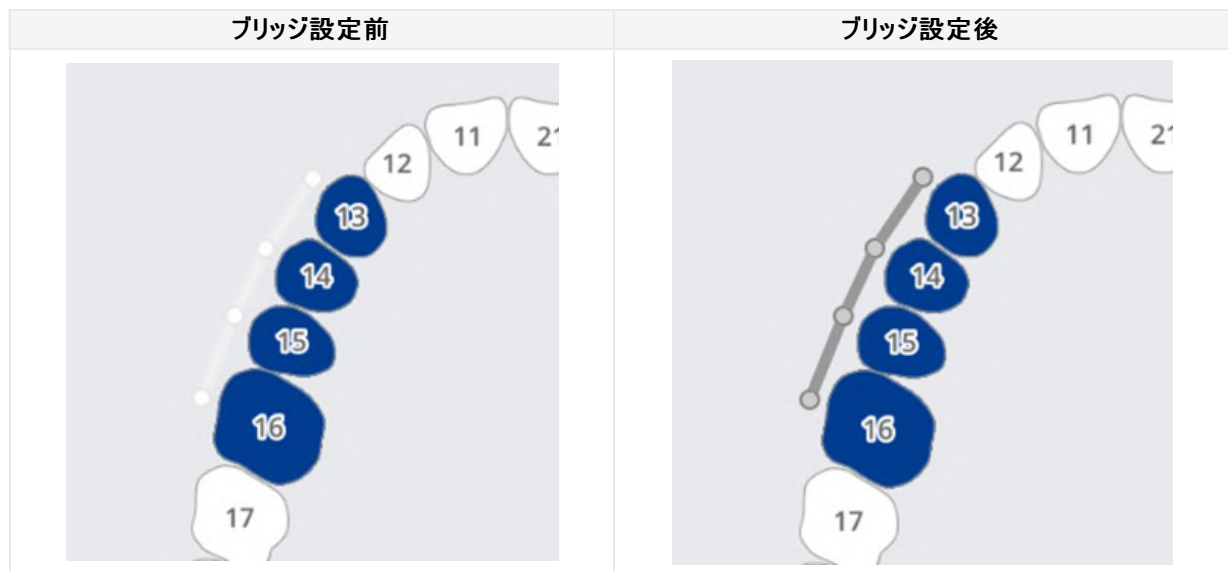

スキャンオプションの設定

作業しているプログラムにより、さまざまなスキャンオプションが提供されます。

選択したスキャンオプションは各スキャンプログラムに渡されます。

Medit Scan for Labs

一般オプション

	隣在歯	支台歯と隣在歯をマーキングし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	対合歯	拮抗歯を自動的にマークし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	咬合器	スキャンプログラムで咬合器を選択するためのオプションを表示します。
	移動マーカー	スキャンプログラム中の「顎の運動」のスキャン方法を使用できるようにします。

歯別のオプション

	スキャンボディ	スキャンプログラムでスキャンボディをスキャンするための方法を設定できます。
	施術前スキャン	スキャンプログラムで施術前模型をスキャンするための方法を設定できます。
	ワックスアップスキャン	スキャンプログラムでワックスアップをスキャンするための方法を設定できます。

お気に入り追加

製品をお気に入りとして登録すると、素早く製品を選択できます。

登録済みお気に入りのリストはテンプレートとして管理され、エクスポートおよびインポート機能を通して共有できます。

お気に入り追加

1. 歯番を選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シールドを選択します。
 - タイプ – 方法 – 材料 – シールドは、すべてが選択されていなくても、お気に入りとして登録できます。
3. 「星」アイコンをクリックします。



4. 選択したパラメータ（歯番を除く）の組み合わせは、お気に入りの検索リストに掲載されます。

お気に入りテンプレートの管理

異なるタイプのテンプレートを登録、管理、共有できます。

追加	新規テンプレートを追加します。
名前の変更	現在のテンプレート名を変更します。
削除	現在のテンプレートを削除します。
エクスポート	現在のテンプレートをファイルにエクスポートします。
インポート	テンプレートファイルをインポートします。

スキャン/CADでの作業

スキャン処理

入力した情報に基づき、スキャンを進めます。

1. 治療情報を入力/保存し、必要なスキャンオプションを選択します。
2. 画面の右上隅の「スキャン」ボタンをクリックします。

CAD処理


Medit Linkは、Medit LinkをDentalCADに接続する、DentalCAD統合アプリを提供しています。

1. App BoxのDentalCAD Integrationアプリをインストールします。
2. ケースの詳細に移動し、クイックランチャーのDentalCAD Integrationアプリをクリックします。
3. ポップアップ表示のダイアログでPCにインストールしたDentalCADアプリの保存先を指定します。
4. スキャン済みケースのケースの詳細を入力し、DentalCAD Integrationアプリアイコンをクリックすると、dentalProjectファイルを作成するためのダイアログがポップアップ表示されます。
5. DentalCADのフォーム情報を登録し、「開く」をクリックし、CADプログラムを開きます。
6. DentalDB Integrationアプリをインストールする場合には、CADの結果はexocadの指定された保存先に自動的に保存されます。（技工所アカウントのみ）


アドインアプリを活用

クイックランチャーを追加

クイックランチャーにインストールされているアプリアイコンをクリックしてさまざまなアドインアプリをここから直接実行できます。アプリアイコンをドラッグして並び順を変更できます。

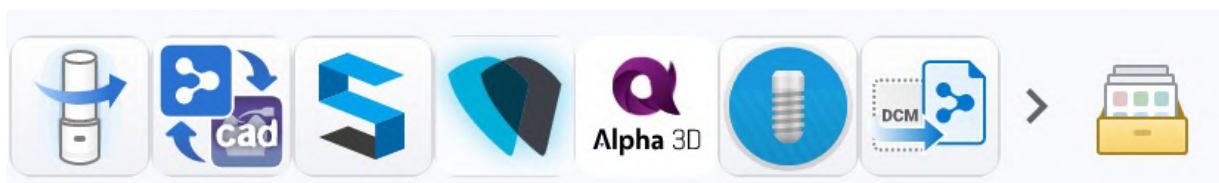

アプリランチャー管理

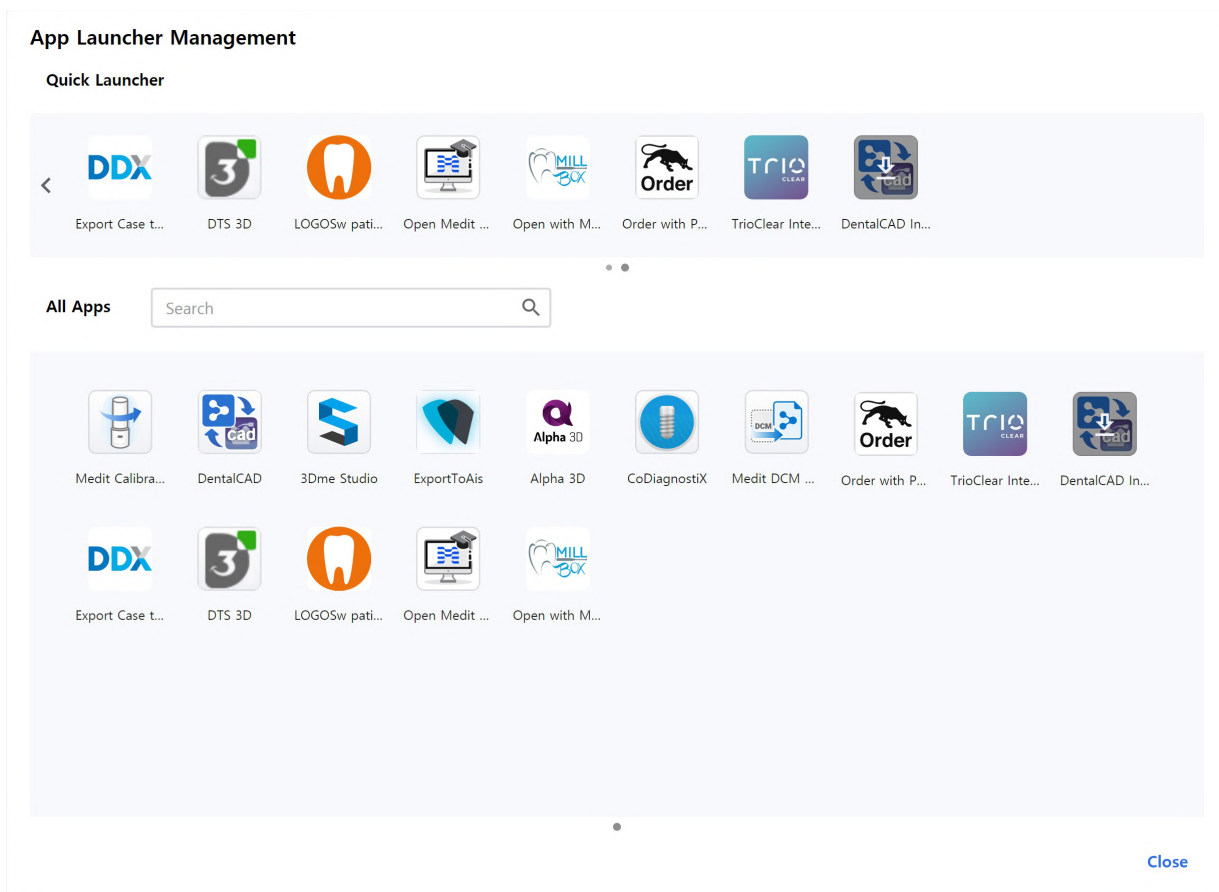

クイックランチャー

クイックランチャーにどのアプリを表示するか決めることができます。アプリアイコンをドラッグしてアプリの並び順を変更したり、同じようなアプリをグループ化してフォルダを作成してまとめたりできます。

すべてのアプリ

インストールしたすべてのアプリを表示します。アプリアイコンを右クリックして、クイックランチャーにアプリを追加できます。右クリックのコンテキストメニューからアプリを選択したり、インストールまたはアンインストールしたりすることもできます。

結果ファイルの取得

スキャン結果ファイルのエクスポート

注文を通してパートナーと結果を共有することに加え、Medit Linkを通して、エクスポート機能を使用して希望するファイル形式で結果ファイルを保存することもできます。

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

118

ファイルのエクスポート先	結果ファイルの保存先を指定します。
フォルダ名	システムが新規フォルダを作成し、そこにすべての結果ファイルを保存します。 デフォルトのフォルダ名は命名ルールによって設定されます。直接フォルダ名は変更できます。 設定 > エクスポートオプション > フォルダ名のルールで命名ルールを定義できます。
ファイル名	結果のファイル名を設定します。名前ルールでデフォルトのファイル名は設定されます。直接フォルダ名を変更できます。 設定 > エクスポートオプション > フォルダ名のルールから名前ルールを定義できます。
タイプ	使用したい設計プログラムを選択します。 Medit Linkが選択に基づいてファイルを調整し、追加で軸を整列させることなく設計をできるようにします。
メッシュ形式	メッシュファイル形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
ファイルの圧縮	すべての結果を一つのファイルに圧縮します。
個別メッシュデータの結合	個別の歯と上顎または下顎の結果を結合します。いくつかのファイルを一つのプログラムにインポートできない場合に役に立ちます。
すべての咬合関係をエクスポート	複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、一度にすべての咬合結果をエクスポートできます。
ケース情報をPDFとして保存	結果付きPDFとしてケース情報を保存します。

ケースリストから結果ファイルをエクスポート

Case BoxとWork Boxのケースリストの上の「エクスポート」オプションを使用して一つまたは複数のケースの結果ファイルを同時にエクスポートできます。

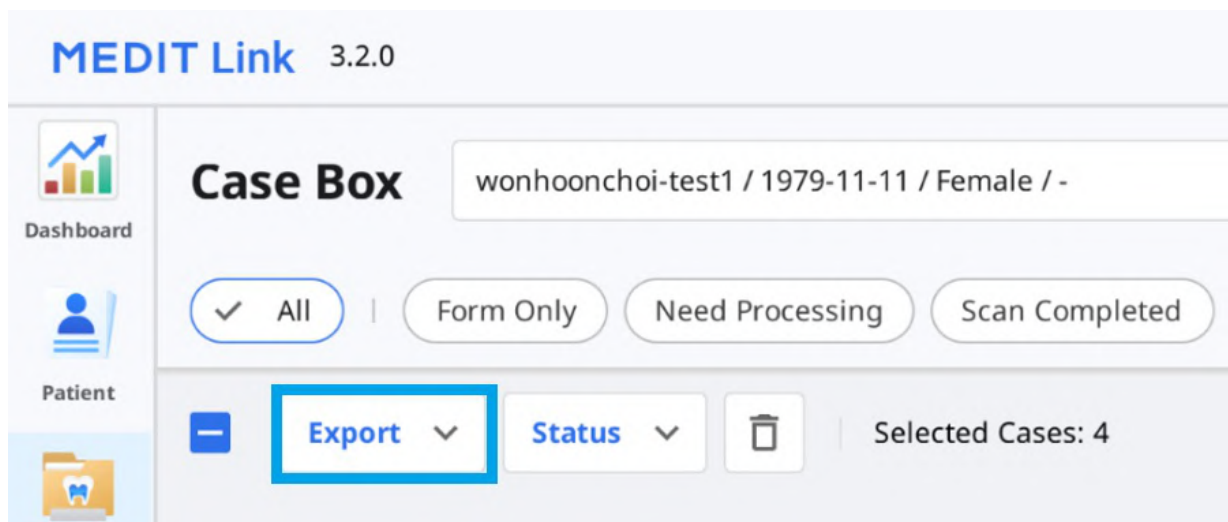

1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. リストからエクスポートするすべてのケース結果ファイルを選択します。

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▼

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▼ |
 Status ▼ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. 「エクスポート」をクリックし、「結果ファイル」を選択します。

Export ▼

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. 保存先フォルダ、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブでエクスポートオプションを選択します。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

注意

複数のケースのファイルをエクスポートする場合、「フォルダ名」と「ファイル名」フィールドは編集できません。フォルダ名とファイル名は、設定 > エクスポートオプションの「フォルダ名のルール」と「ファイル名のルール」で設定しているルールに沿って自動的に作成されます。

- 「エクスポート」をクリックします。
- 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート

ファイルビューアタブの右上隅にある「エクスポート」アイコンを使用して、スキャン結果ファイルをエクスポートできます。

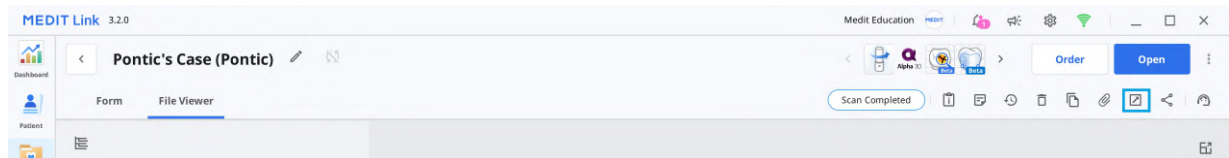

1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. ファイルビューアタブの右上隅にある「エクスポート」アイコンをクリックします。

4. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ **PLY** ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ **PNG** ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. 「ファイルリスト」タブで、不要なファイルの選択を解除してケースに必要なファイルを選択できます。




6. 「エクスポート」をクリックします。
7. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

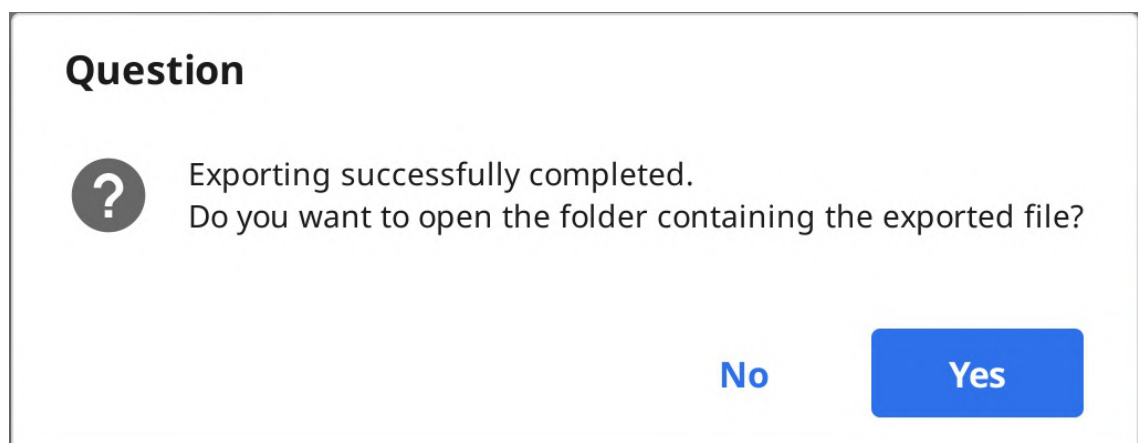


データツリーから結果ファイルのエクスポート

ファイルビューアーの拡張メニューから特定のデータグループのファイルをエクスポートできます。

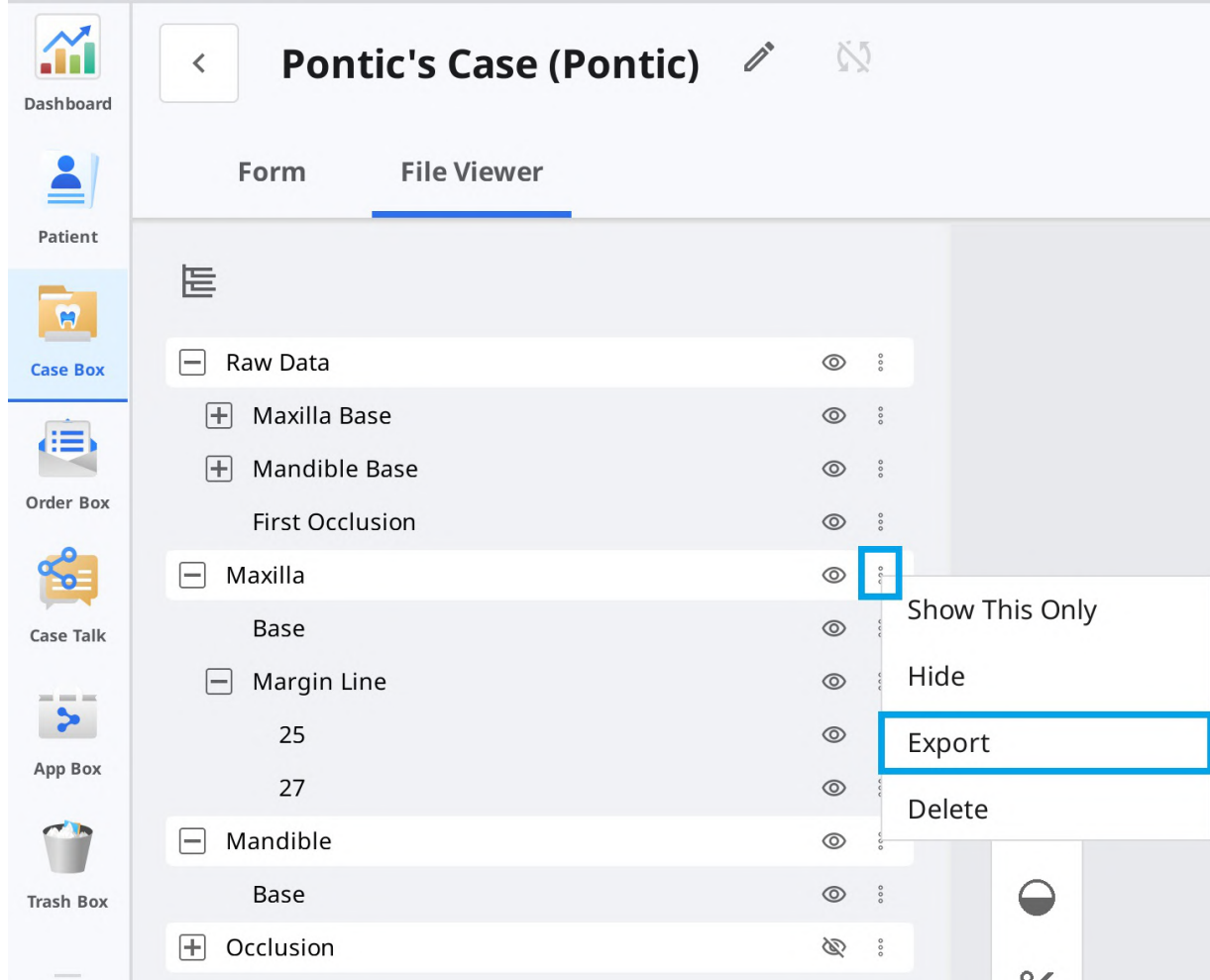

1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. データグループの横にある三点リーダーアイコンまたはファイルビューアタブのデータツリー中のいずれかをクリックします。
4. 次に「エクスポート」をクリックします。

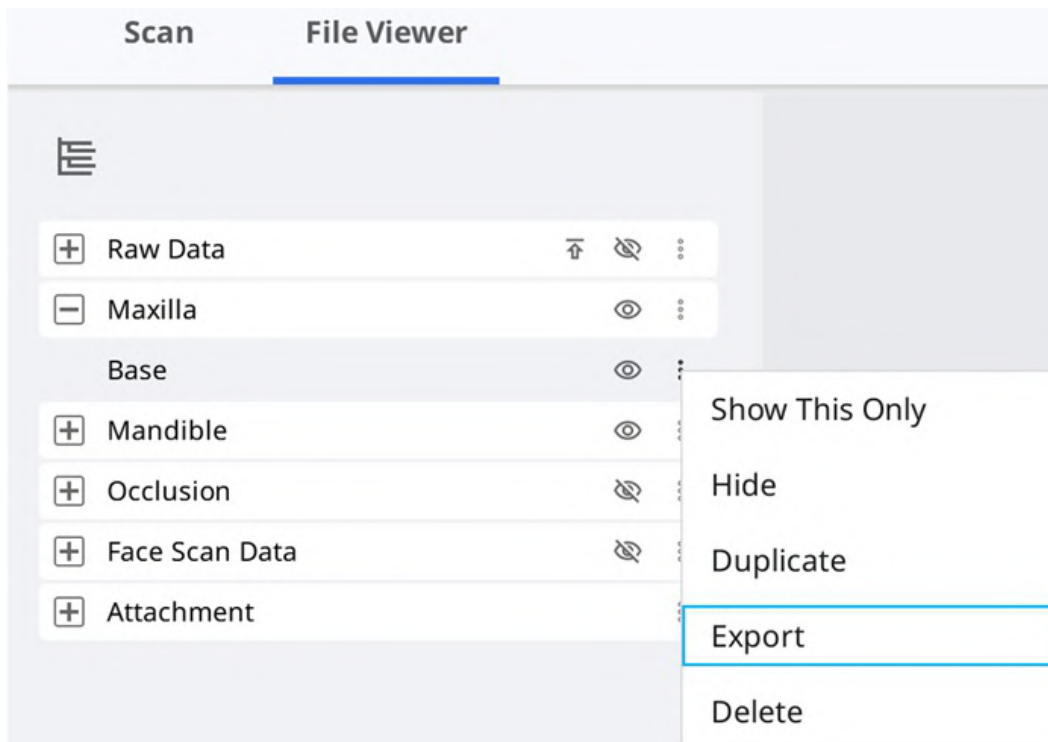

5. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

6. ファイルリストで選択されているデータツリーで選択したファイルだけが表示されます。

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla

- ☐ Base

☒ Mandible

- ☒ Base

☐ Occlusion

- ☐ First Occlusion
- ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion

☐ Free

- ☐ Maxilla
- ☐ Mandible

☐ Face Scan Data

- ☐ Face Scan Data

Close Export

7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

CSVとしてケースリストをエクスポート

Medit LinkはCSV形式でケースリストをエクスポートできる機能を提供しています。

基本情報付きケースリストをエクスポートし、ケースを簡単に管理できます。

1. Case Box、Order Box、In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. エクスポートするケースを選択します。


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. 「エクスポート」をクリックし、「ケースリスト(表示どおり)」または「ケースリスト(すべて項目入り)」を選択します。

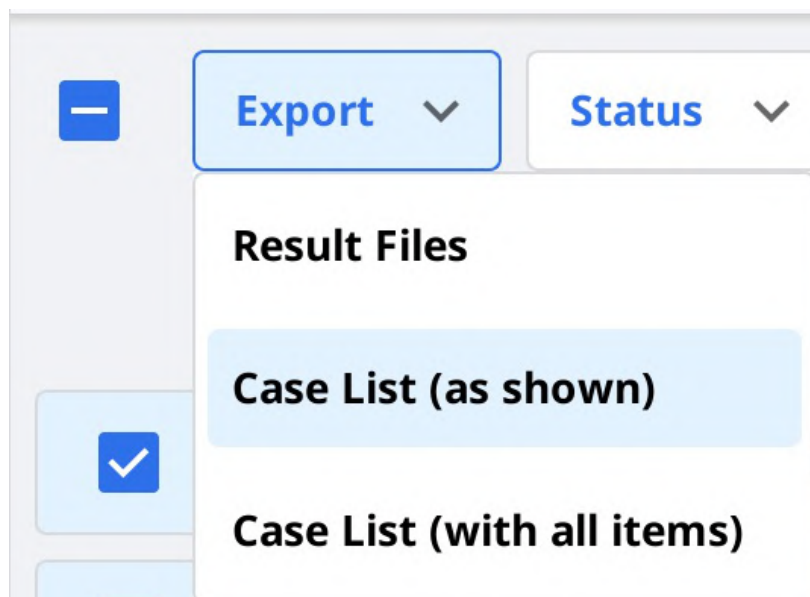

注意

ケースリスト(表示どおり): 画面上に現在表示されている項目入りのケースリストをエクスポートします。表示オプション>表の項目に移動し、希望する項目を表示または非表示にします。

ケースリスト(すべて項目入り): ステータス、ケース名、生年月日、フォーム情報、最終変更日、スキャン日、注文日、技工所名などすべての項目入りのケースリストをエクスポートします。

4. 保存場所とファイル名を定義してから、リストを保存します。
5. ケースリストは、CSVファイルとして保存されます。

マージンラインのエクスポート


Medit Scan for Clinicsは、マージンラインの作成機能を提供し、Medit LinkはCADプログラムにマージンラインを転送できます。

色としてマージンラインをエクスポート

通常、Medit Linkは色としてマージンラインを転換し、上顎または下顎と一緒にその結果をエクスポートします。色情報のCAD参照データのマージンラインを作成できます。

例:

上顎

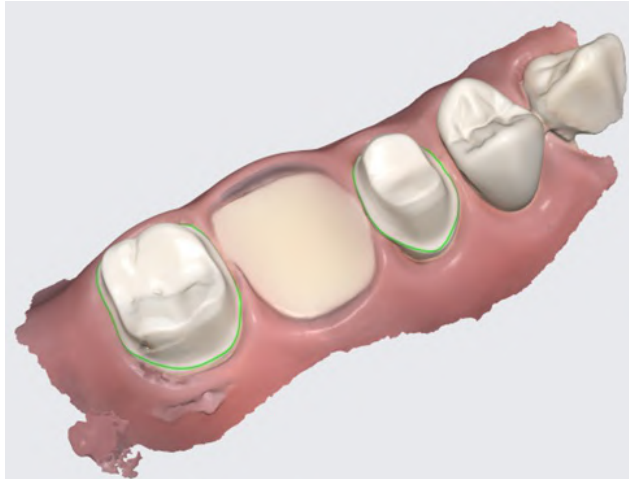

色情報としてのマージンライン付き結果

注意

この機能は、meditMesh、OBJ、PLYなどの色情報を含む形式で利用できます。マージンラインはSTLに転換できません。

注意

タイプ > 3Shapeではこの機能をサポートしていません。


ファイルとしてマージンラインをエクスポート

exocadの場合、Medit Linkはexocadに直接インポートできる“~margin.xyz”にマージンラインをエクスポートします。

追加作業の必要なしにexocadのこのファイルを使用できます。


例：

上顎

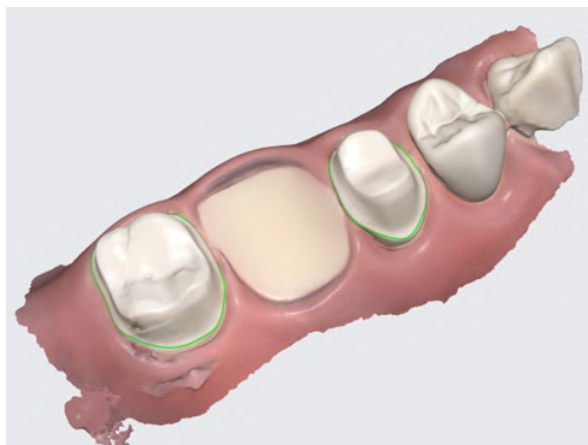

色情報としてのマージンライン付き結果

マージンライン

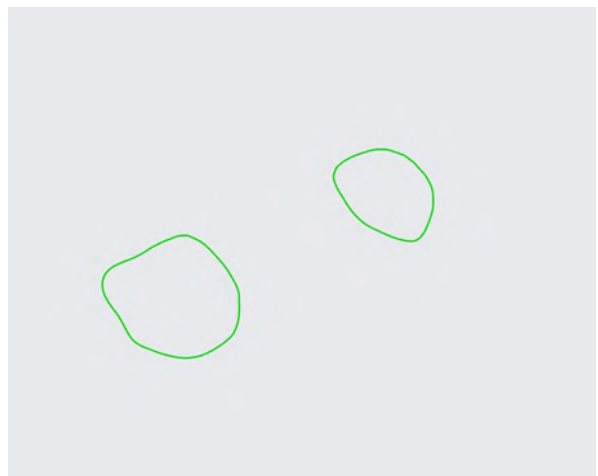

個別ファイルとしてエクスポートされたマージンライン

Medit Linkウェブからファイルをダウンロード

Medit Linkはダウンロード機能を提供しています。

Medit Linkアプリケーションをインストールせずに結果ファイルを取得したい場合は、Medit Linkウェブサービスからファイルをダウンロードできます。

注意


データは、ウェブからファイルをダウンロードするためにMeditクラウドにアップロードする必要があります。

ダウンロード機能は、Medit Linkウェブサービスの以下のメニューで利用できます。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

右上部に「ダウンロード」ボタンがあります。

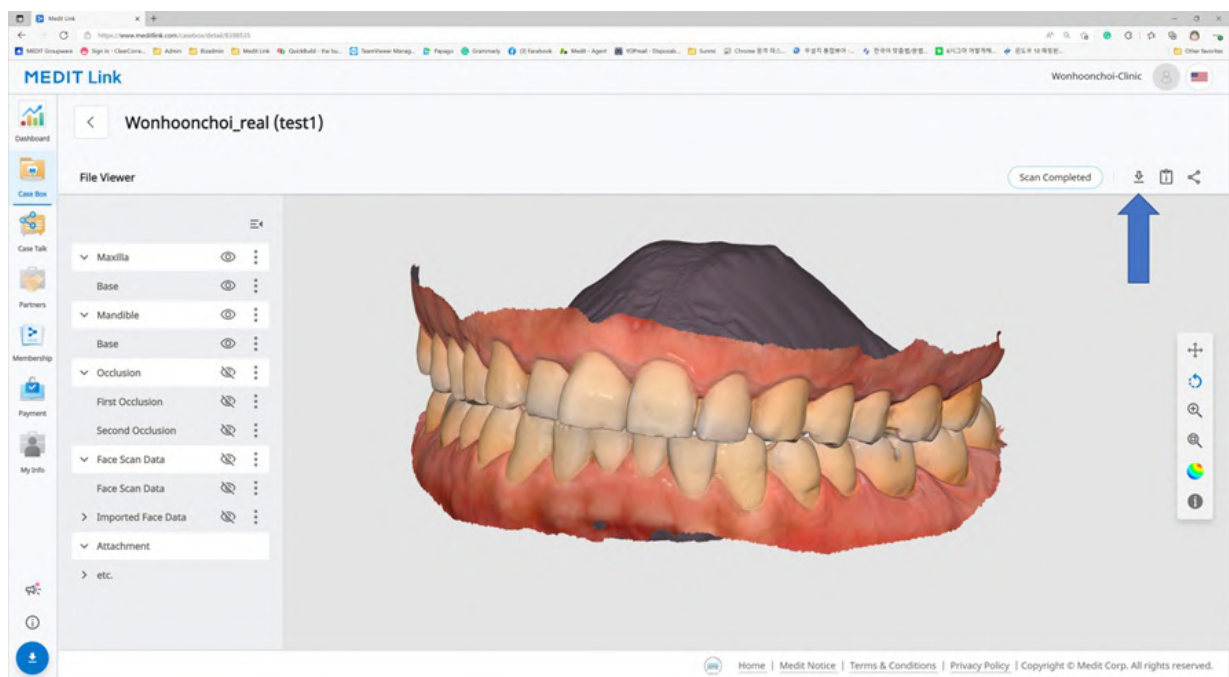

Web Viewer

Case Talkを使用してケースを共有する場合、ダウンロードを許可するかどうかを設定できます。

「ダウンロードを許可」にチェックを入れ、ケースを共有する場合、共有リンクに接続しているすべてのユーザーはファイルをダウンロードできます。

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Web Viewerの右上部に「ダウンロード」アイコンがあります。

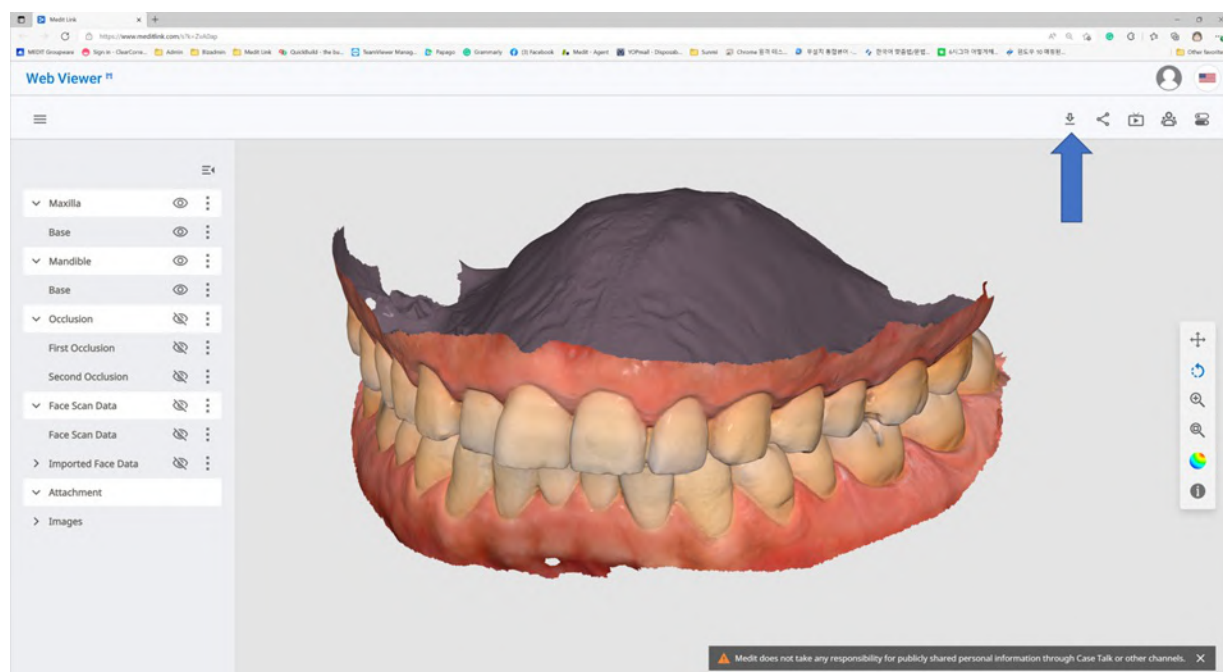

1. 「ダウンロード」をクリックします。



2. ダウンロードダイアログからメッシュ形式を選択します。

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. 次に「OK」をクリックします。

ケースの注文/管理

接続しているプログラムで取得したデータおよびユーザーが添付したデータで簡単にケースを注文できます。

ケースの注文

Case Boxのパートナーに注文を出すことができます。

1. 「注文」ボタンをクリックします。
2. 注文に必要な情報を確認します。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. パートナーを選択します。
4. 注文リストタブから製品情報を確認します。
 - 患者名を共有するかどうかを決めます。
5. ファイルリストタブから注文するファイルを確認します。
6. 希望納品日を入力します。
 - デフォルト値は、注文日後7日で設定されています。
7. パートナーにメモやタグを追加し、特定の詳細説明ができます。
8. 複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、「すべての咬合関係を注文する」をチェックすると一度にすべての咬合結果を送信できます。

- 注文を進めます。

注文の確認(In Box)

- 注文受領時に承認します。
- 承認した注文は、Work Boxに転送されます。

注文のキャンセル(Order Box)

- パートナーが注文を承認する前に注文をキャンセルできます。
- キャンセルされたケースは、再度注文できます。

注文の拒否(In Box)

- 受領した注文を拒否できます。
- 拒否されたケースは再度注文できます。

注文済みケースの確認

歯科医院アカウントのOrder Boxから注文したケースの詳細を確認できます。技工所アカウントのIn Boxから受領したケースも確認できます。

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

注文情報	注文に含むことができる情報は次の項目です。注文ID/患者名/アカウント名/スキャン日/納品日/配送予定日/メモ。 注文済み製品および配送情報の詳細を確認できます。
注文リスト	注文リストは、注文した製品の詳細を表示しています。
配送	発送情報の入力/確認をします。

配送情報の入力 (In Box)

完了した作業の配送情報を入力し、発送を開始します。

1. 配送タブをクリックします。
2. 配送情報を入力し、「登録」をクリックします。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 入力した情報はパートナーに送信されます。

納品日の管理

注文時に希望する納品日を設定でき、この情報はパートナーに転送されます。

納品希望日の設定 (歯科医院アカウント)

- Case Boxから注文する場合、希望納品日を入力できます。

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel **OK**

- デフォルト値は、注文日後7日です。
- 製品受取希望日時を入力し、注文を進めます。
- スライダーを使用して簡単に時間を設定できます。

配送予定日を設定(技工所アカウント)

- In Boxから注文されたケースの納品希望日を入力できます。

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject **Confirm Order**

Pending

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total **KRW 0**

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01
오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01
오전 10:30


Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

1. パートナーに納品希望日を確認し、「編集」ボタンを使用して予定を変更します。



2. 実際の作業日を考慮して納品予定日を入力します。必要があれば、コメントを残すこともできます。

3. 「適用」をクリックします。

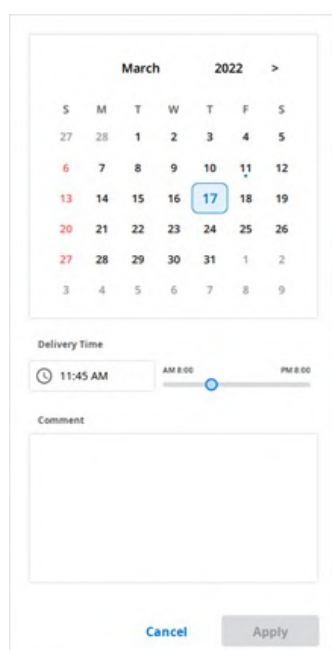

4. 納品予定日およびメモは、注文と一緒に転送されます。
- Order Boxの日付とメモを確認できます。
 - 納品予定日を変更でき、その変更はパートナーに転送されます。
5. 「履歴」ボタンを使用してケース履歴を確認できます。



ケースの完了

完了 (Work Box／In Box)


すべての作業が完了したら、「完了」をクリックし、ケースを完了します。

ケースの詳細からケースを完了する

「開く」または「再スキャン」ボタンの右側に三点リーダーアイコンがあります。




アイコンをクリックし、「Done」を選択し、作業を完了します。

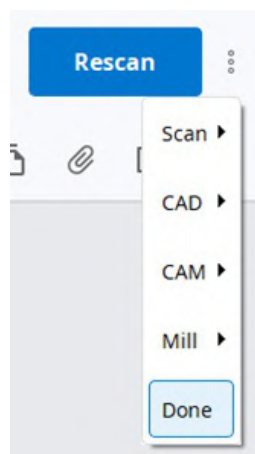

ケースリストから複数のケースを完了する

1. Work Boxに移動します。
2. すべてのケースを選択し、完了します。

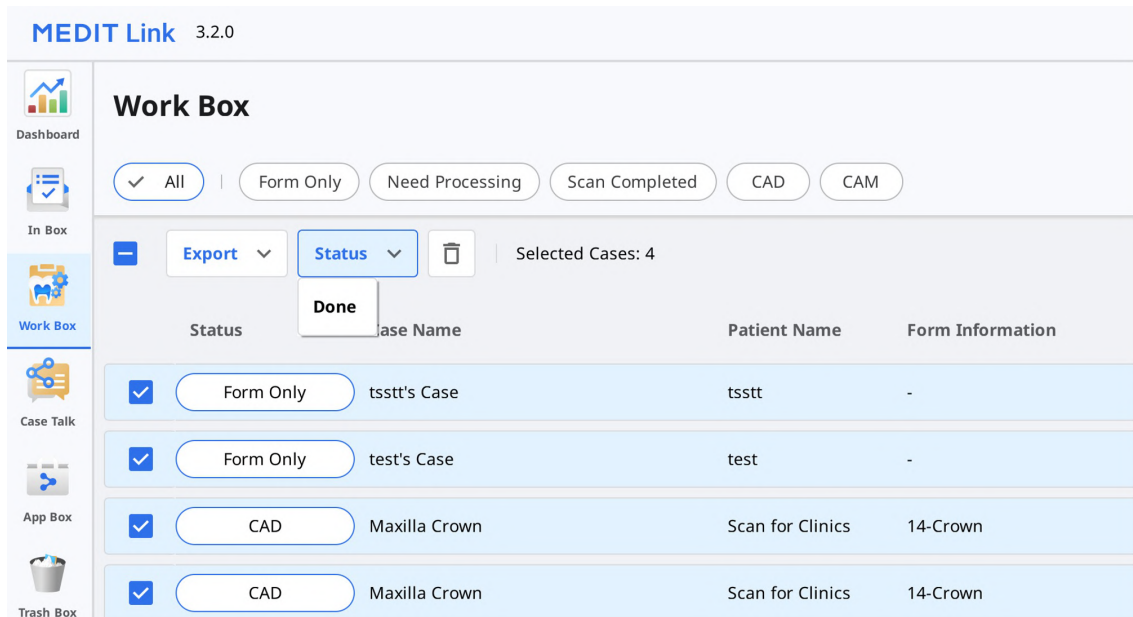


3. 「ステータス」をクリックし、「Done」を選択します。

完了 (Case Box／Order Box)

技工所側でケースが完了したら、歯科医院はすべての注文処理を完了させるためにケースを確認する必要があります。

技工所での作業が完了したら、歯科医院はOrder Box内の「配送確認」ボタンを表示できます。

これをクリックすると、全注文プロセスが完了し、ケースステータスが「Case Completed」に変更されます。

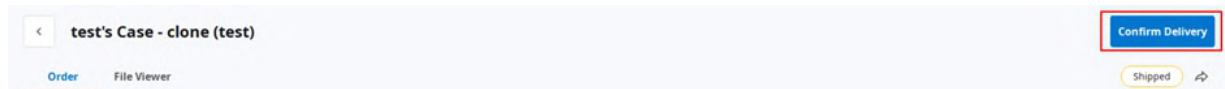

Case Boxの注文のないケースの完了

技工所に注文されていないケースに関して、Case Boxからこれらのケースを完了にできます。

1. Case Boxに移動します。
2. 完了させたいケースを選択します。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. 「ステータス」をクリックし、「Case Completed」を選択します。

タグを使用してやり取りをする

タグを使用してケースに関する追加情報を追加し、パートナーに送信できます。

新規ケースの作成時にタグを追加

新規ケースを作成またはケース情報を編集時にタグを入力できます。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

以前に使用したタグを簡単に検索し、選択できます。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

注文時にタグを追加

注文中に注文ダイアログのタグを確認し、編集できます。

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

ケースの詳細でタグを確認

