

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

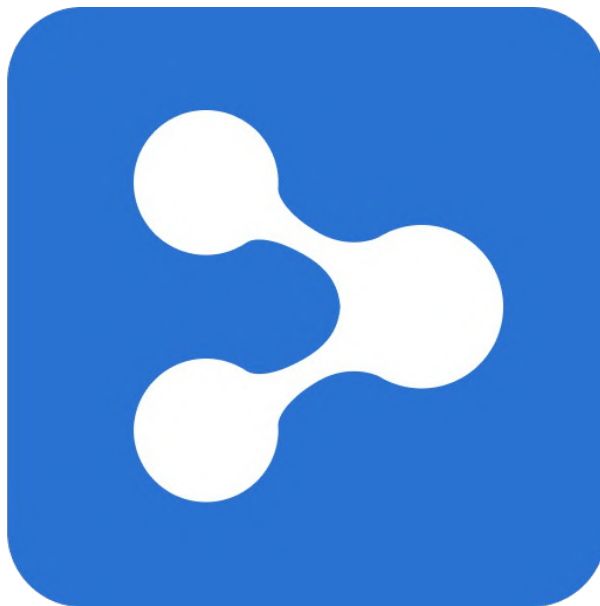


Table of Contents

Medit Link

การแนะนำ	7
Medit Link	7
ภาพรวมการบริการ	7
บริการคลาวด์	8
แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ	9

Medit Link > Installation

ความต้องการของระบบ	10
ความต้องการของระบบสำหรับ Windows	10
ความต้องการของระบบสำหรับ macOS	10
ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ	10
แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์	10
ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์มือถือ	10
การติดตั้งบน Windows	11
การติดตั้งบน macOS	14

Medit Link > Getting Started

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	18
เว็บไซต์ Medit Link	18
สมัครลงทะเบียน	18
หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
ภาพรวม Dashboard	24
Medit Insights	24
สมัครสมาชิก Medit Insights	25
ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights	26
Patient	27
ค้นหาผู้ป่วย	27
Case Box/Work Box	28
การกรองเคส	28
กรองตามผู้ป่วย	28
กรองตามสถานะ	31
กรองตามระยะเวลา	31
กรองตามการค้นหา	32
รายละเอียดเคส	32
Order Box/In Box	34
รายละเอียดคำสั่งทำ	34
แท็บใน Order Box/In Box	34
Case Talk	35
การสร้าง Case Talk	35
การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์	36
รายละเอียด Case Talk	38
Web Viewer	39
คำอธิบายประกอบ	40
ความคิดเห็น	42

การแชร์หน้าจอบนเว็บเบราว์เซอร์	42
แผนผังข้อมูล	42
การควบคุมแผนผังข้อมูล	42
การควบคุมโมเดล 3D	43
พันธมิตร	45
ค้นหาพันธมิตร	45
รายชื่อพันธมิตรของฉัน	45
ค่าเชิญเป็นพันธมิตร	46
Membership	47
การเป็นสมาชิก	47
Medit Cloud Storage Plan	47
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	49
สมัครสมาชิก	49
ยกเลิกการสมัครสมาชิก	51
การสมัครสมาชิกของฉัน	52
รายละเอียด	53
สมัครสมาชิกอีกครั้ง	53
วิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน	54
วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน	55
แลกรับ	55
รายละเอียด	56
ลงทะเบียนรหัสแลกรับ	56
เปิดใช้งานรหัสแลกรับ	57
รายละเอียดการชำระเงิน	57
ดูรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน	58
My Info	60
บัญชีของฉัน	60
คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)	60
เครื่องสแกนของฉัน	61
เมนูอื่น ๆ	63
ประกาศและการอัปเดต	63
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	63
ดาวน์โหลดแอป Medit Link	64
 Medit Link > Medit Link App	
ภาพรวม	65
ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท	65
แถบชื่อเรื่อง	66
ข้อมูลของฉัน	66
การแจ้งเตือน	66
ประกาศและการอัปเดต	67
การตั้งค่า	67
สถานะเครือข่าย	68
การตั้งค่า	70
ทั่วไป	70
การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	71
กำหนดระยะเวลา	72
พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง	72
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	72
ตั้งค่าโปรแกรมที่เชื่อมต่อ	72
ตัวเลือกการส่งออก	73
เครื่องมือแปลงเคส	74

ส่งออกเคส	75
นำเข้าเคส	76
ตัวเลือกพรีเอกซี	78
เกี่ยวกับ	78
คู่มือผู้ใช้	79
เมนู	80
Dashboard	80
Patient	80
เพิ่มผู้ป่วยใหม่	81
ลบผู้ป่วย	81
ผสารรวมผู้ป่วย	82
Case Box/Work Box	82
แท็บใน Case Box/Work Box	83
ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box	83
Order Box/In Box	84
แท็บใน Order Box/In Box	85
Case Talk	85
App Box	86
All	86
Medit Apps	86
ถูกดาวน์โหลด	87
Trash Box	87
โปรแกรมจัดการการซิงโครไนซ์เคส	88
อัปโหลด	88
ดาวน์โหลด	89
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	89
โปรแกรมดูไฟล์	91
แผนผังข้อมูล	91
เครื่องมือควบคุมโมเดล	91
การควบคุมโมเดล 3D	92
การควบคุมภาพ 2D	93
เครื่องมือฟังก์ชัน	93
การจับภาพและบันทึก	93
การจับภาพออร์โธ	94
เติมเต็มช่องว่าง	95
การตัดแต่ง	96
ปรับการจัดแนวสลับให้เหมาะสม	98
การเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่าง	100
จัดการข้อมูลสลับหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์	101
วิธีการจัดการผลลัพธ์หลายรายการ	101
ตัวเลือกมุมมอง	103
ตัวกรองสถานะ	103
ประเภทมุมมอง	104
การจัดกลุ่ม	104
การเรียงลำดับ	104
การกรองและการค้นหา	106
กรองตามผู้ป่วย	106
กรองตามวันที่	107
ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง	108
Medit Link > Workflow	
สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส	109

การสร้างเคส	109
สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)	109
สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	109
การแก้ไขเคส	110
แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)	110
แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	111
การโคลนเคส	111
โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)	112
โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	112
การลบเคส	112
ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)	112
ข้อมูลแบบฟอร์ม	113
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box	113
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	113
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box	113
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	113
การเชื่อมต่อพื้นที่เข้ากับสะพาน	113
การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน	114
Medit Scan for Labs	114
ตัวเลือกทั่วไป	114
ตัวเลือกตามพื้นที่	114
การเพิ่มไปยังรายการโปรด	115
เพิ่มไปยังรายการโปรด	115
จัดการแท็บโปรด	115
ทำงานกับการสแกน/CAD	116
กระบวนการสแกน	116
กระบวนการ CAD	116
ใช้แอปเพิ่มเติม	116
เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน	116
การจัดการตัวเปิดแอป	116
ตัวเปิดด่วน	117
แอปทั้งหมด	117
รับไฟล์ผลลัพธ์	118
ส่งออกไฟล์ผลการสแกน	118
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส	119
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์	121
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล	123
ส่งออกรายการเคสเป็น CSV	126
ส่งออกเส้นขอบ	127
ส่งออกเส้นขอบเป็นสี	127
ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์	128
ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link	128
Case Box/Work Box	129
Web Viewer	129
สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ	132
การสั่งทำเคส	132
ยืนยันคำสั่งทำ (In Box)	133
ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)	133
ปฏิเสธคำสั่งทำ (In Box)	133
การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ	133
การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)	134
การจัดการวันส่งมอบ	134

การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)	134
การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)	135
การเสร็จสิ้นเคส	136
เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)	136
เสร็จสิ้นเคสจากรายละเอียดเคส	136
เสร็จสิ้นหลายเคสจากรายการเคส	137
เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)	137
เสร็จสิ้นเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำใน Case Box	137
สื่อสารโดยใช้แท็ก	139
เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่	139
เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ	140
ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส	140

การแนะนำ

Medit Link

Medit Link เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคลินิกและห้องแล็บเพื่อส่งมอบขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละฝ่าย

มันนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างตามประเภทและการอนุญาตของแต่ละบัญชี โปรแกรมนี้มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การสแกนด้วยเครื่องสแกนช่องปากและโมเดล การสั่งทำเคส และการออกแบบและการผลิตฟันเทียม

Medit Link ประกอบด้วยบริการบนเว็บและแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

ภาพรวมการบริการ

		เว็บ	แอป
		- ลงทะเบียนและจัดการบัญชี - ค้นหาและจัดการพันธมิตร - แชร์เคสผ่าน Web Viewer พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้ - เคสการเข้าถึงที่เกิดขึ้นจากแอป - จัดการคำสั่งทำ	- ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม - สแกน - จัดการคำสั่งทำ - เชื่อมโยงกับ CAD - จัดการผู้ป่วย
คลินิก	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและคลินิกของคุณ และแชร์เคสต่าง ๆ - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - พันธมิตร - Membership - My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม สแกน ส่งคำสั่งทำ และจัดการผู้ป่วย - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	สมาชิก	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
ห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและห้องแล็บของคุณ และแชร์เคสต่าง ๆ - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - พันธมิตร - Membership - My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม สแกน และจัดการคำสั่งทำ - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	สมาชิก	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

บริการคลาวด์

Medit Link รองรับการอัปโหลด/ดาวน์โหลดฐานข้อมูลและไฟล์อัตโนมัติผ่าน AWS (Amazon Web Services)

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์จะถูกซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หลายรายในองค์กรโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้ตลอดเวลา การสำรองข้อมูลบนคลาวด์และการกู้คืนจะรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัย มันช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยแม้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์ขัดข้องกะทันหัน

บริการคลาวด์ช่วยให้ทันตแพทย์และห้องแล็บที่เป็นพันธมิตรสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งอีเมลหรือถ่ายโอนการสแกนด้วยตนเอง ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ป่วย จะได้รับการเข้ารหัส จัดเก็บ และส่งต่ออย่างปลอดภัย Medit ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการแพทย์ เช่น HIPAA และ GDPR

แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ

Medit Link เสนอระบบการสั่งทำของตัวเอง

- Medit Link ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการเป็นพันธมิตรระหว่างทันตแพทย์และห้องแล็บ และแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณสามารถตรวจสอบและจัดการสถานะการสั่งทำได้

ความต้องการของระบบ

หมายเหตุ

โปรดดูความต้องการของระบบสำหรับ Medit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์การสแกนกับเครื่องสแกนของคุณ

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows

	แล็ปท็อปและเดสก์ท็อป
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	16GB หรือสูงกว่า
กราฟิก	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) หรือสูงกว่า / หรือการ์ดแสดงผล AMD ที่เทียบเท่า
OS	Windows 10 64 บิต (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น 32 บิต) หรือสูงกว่า

ความต้องการของระบบสำหรับ macOS

	Mac
โปรเซสเซอร์	M1 with 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16GB หรือสูงกว่า
OS	Monterey 12 หรือสูงกว่า

ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ

แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์

	เบราว์เซอร์
พีซี	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์มือถือ

	Android	iOS
อุปกรณ์	เทียบเท่า Galaxy S7 หรือสูงกว่า	เทียบเท่า iPhone 7 หรือสูงกว่า
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB หรือสูงกว่า	2GB หรือสูงกว่า
AP	สูงกว่า Snapdragon 710	A10 Fusion


การติดตั้งบน Windows

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อมโปรแกรมสแกน - Medit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs

1. เรียกใช้ Medit_LinkSetup.exe
2. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง
3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Medit Link โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใบอนุญาตแล้วคลิก "ติดตั้ง"

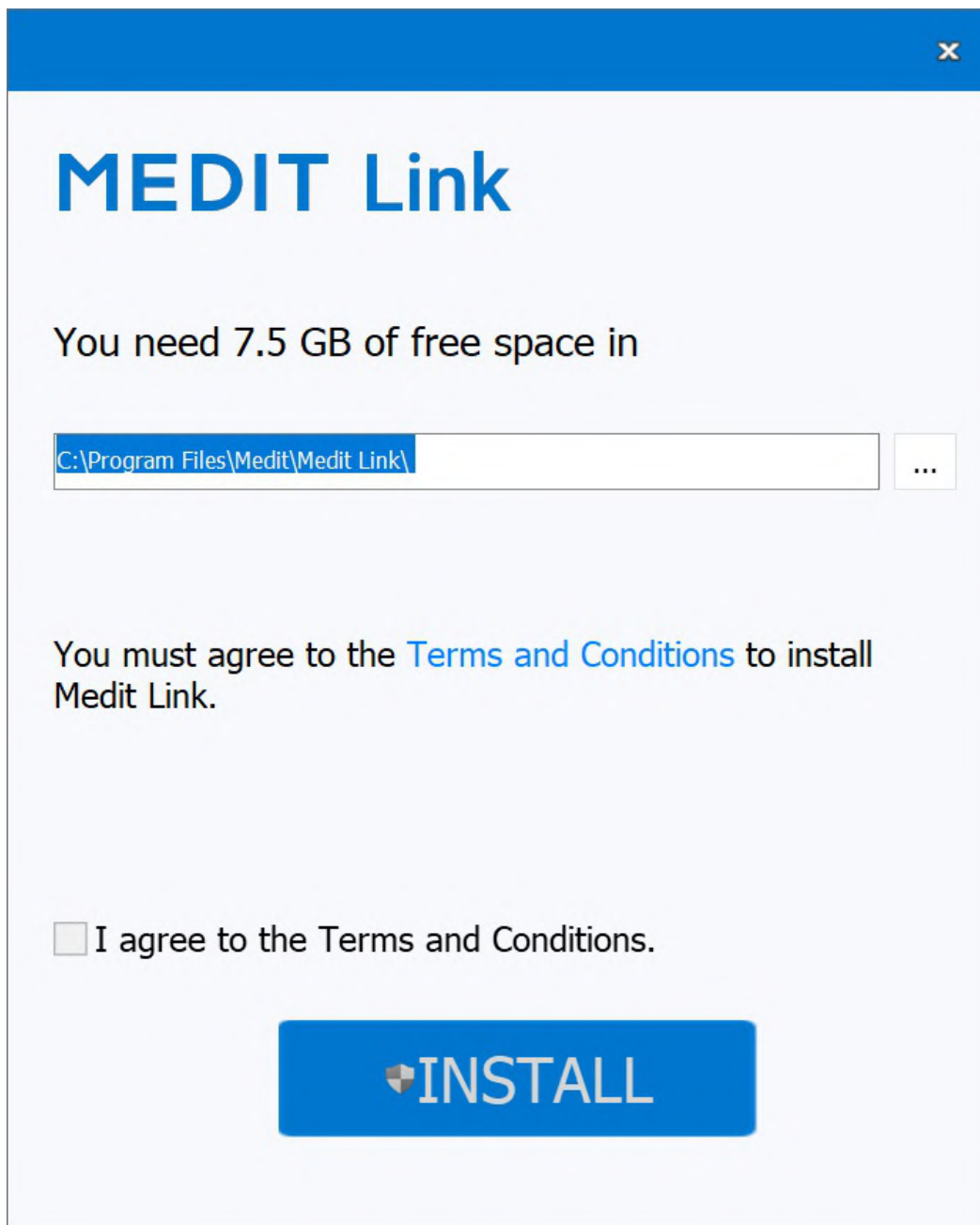

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายเครื่องสแกนออกจากคอมพิวเตอร์แล้วก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป การติดตั้งอาจไม่ดำเนินการต่อหากเครื่องสแกนถูกเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ
5. โปรแกรมจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติและอาจใช้เวลาสักครู่ อย่าปิดหรือถอดปลั๊กพีซีของคุณจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์

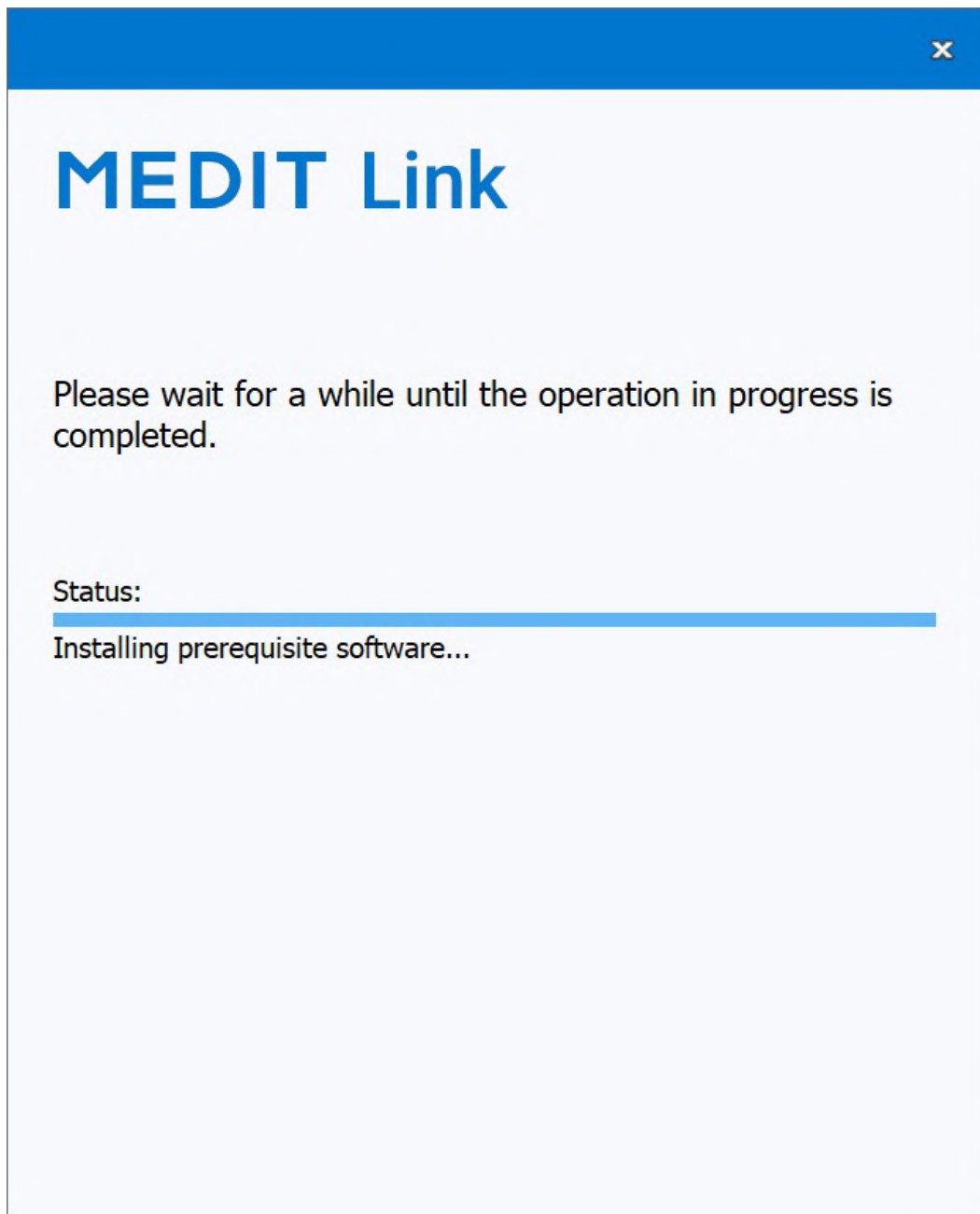

6. โปรดรีสตาร์ทพีซีของคุณหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทพีซีหากคุณไม่มีเครื่องสแกน




 หมายเหตุ

หากคุณไม่รีสตาร์ทพีซีหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครื่องสแกนอาจทำงานไม่ถูกต้อง


การติดตั้งบน macOS

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อม Medit Scan for Clinics


1. เรียกใช้ Medit_Link_x.x.x.pkg แล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

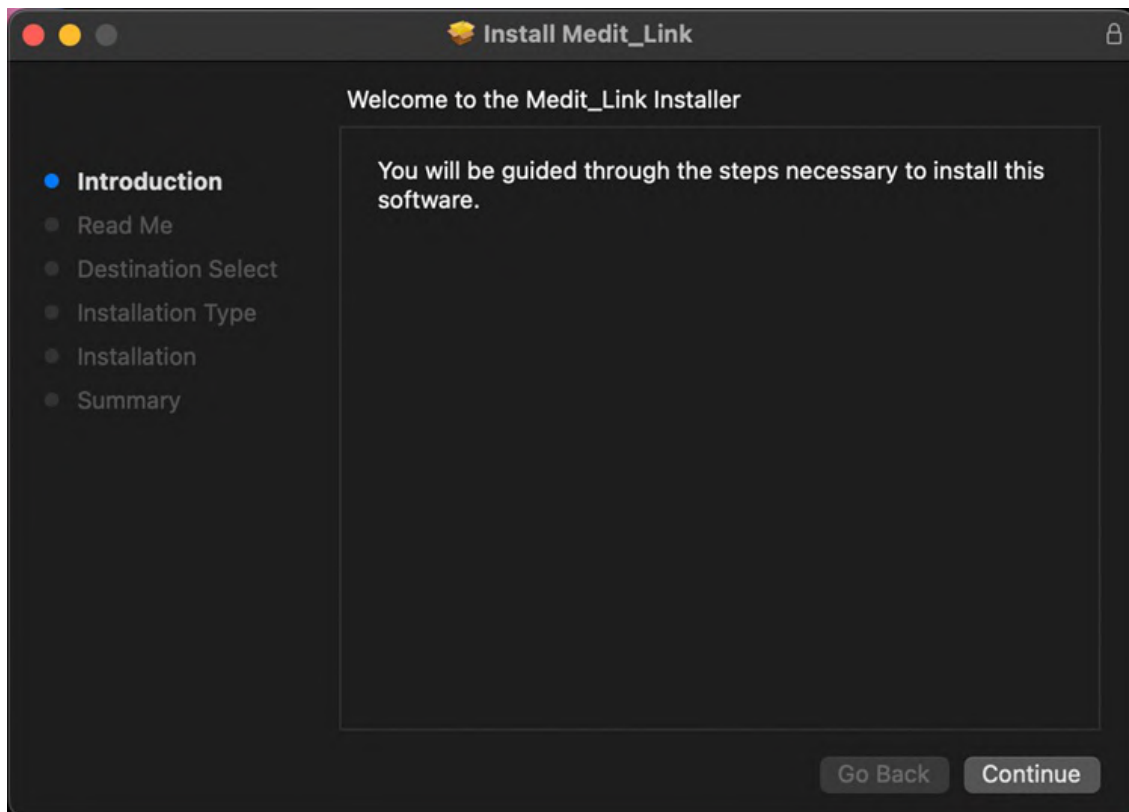


2. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียดแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

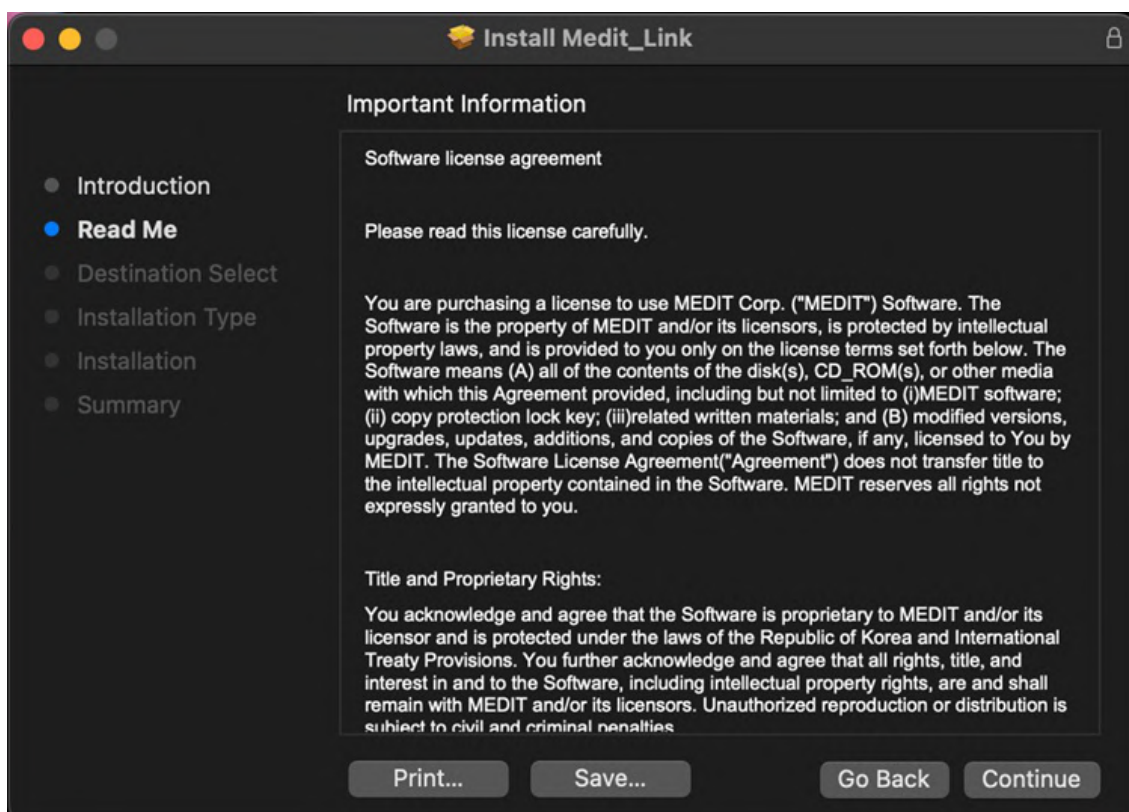

3. เลือกดิสก์ที่จะติดตั้งแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

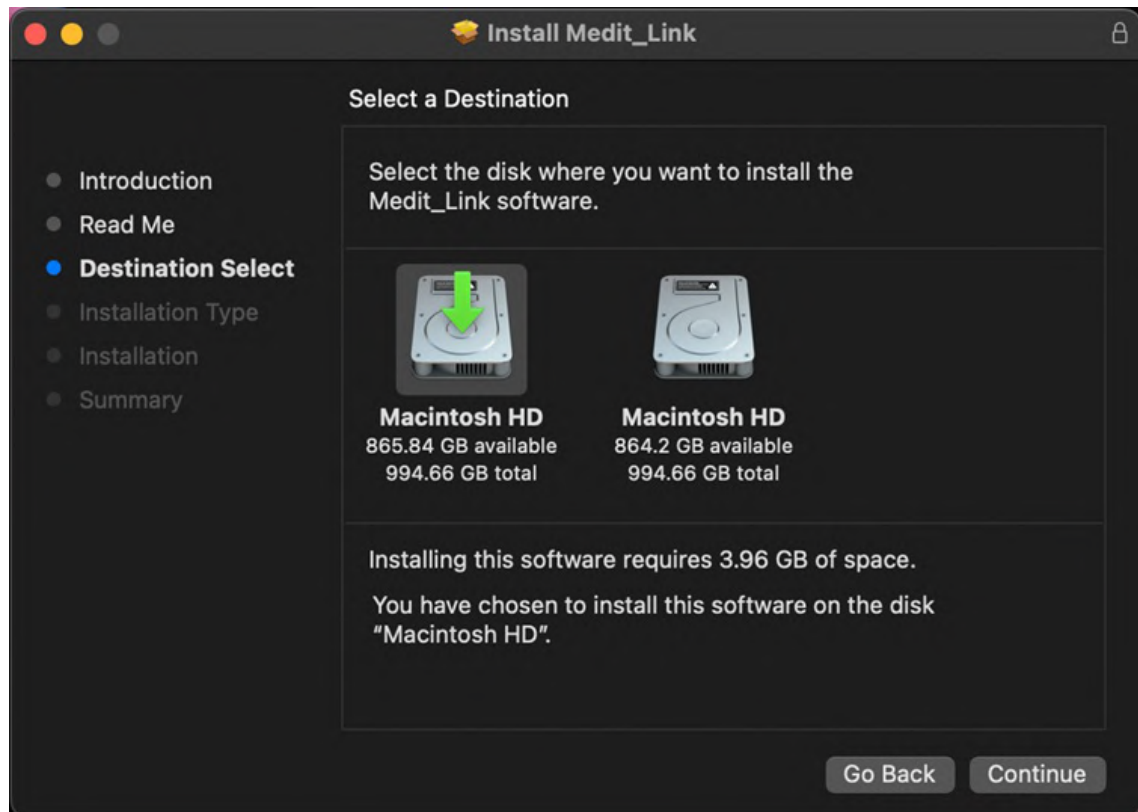


4. คลิก "เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง..." เพื่อเปลี่ยนปลายทางการติดตั้ง

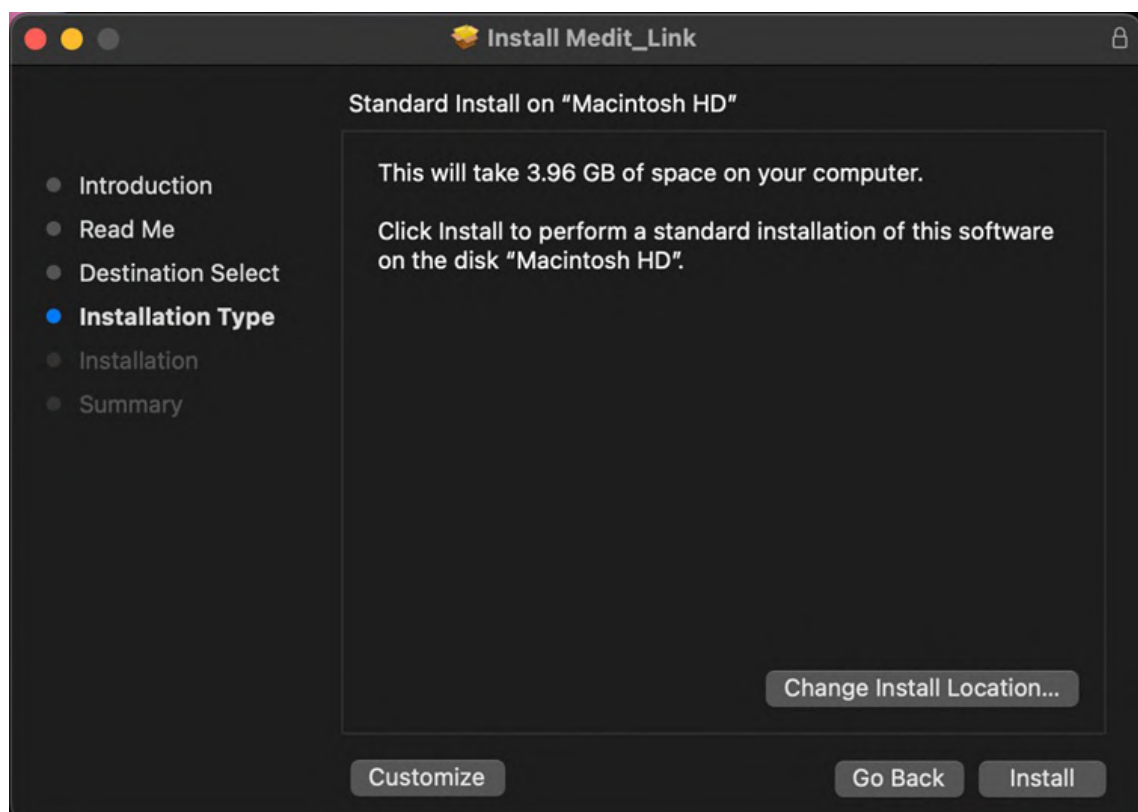


5. คลิก "ติดตั้ง" และพิมพ์รหัสผ่าน Mac ของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้งหากมีการร้องขอ



6. รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

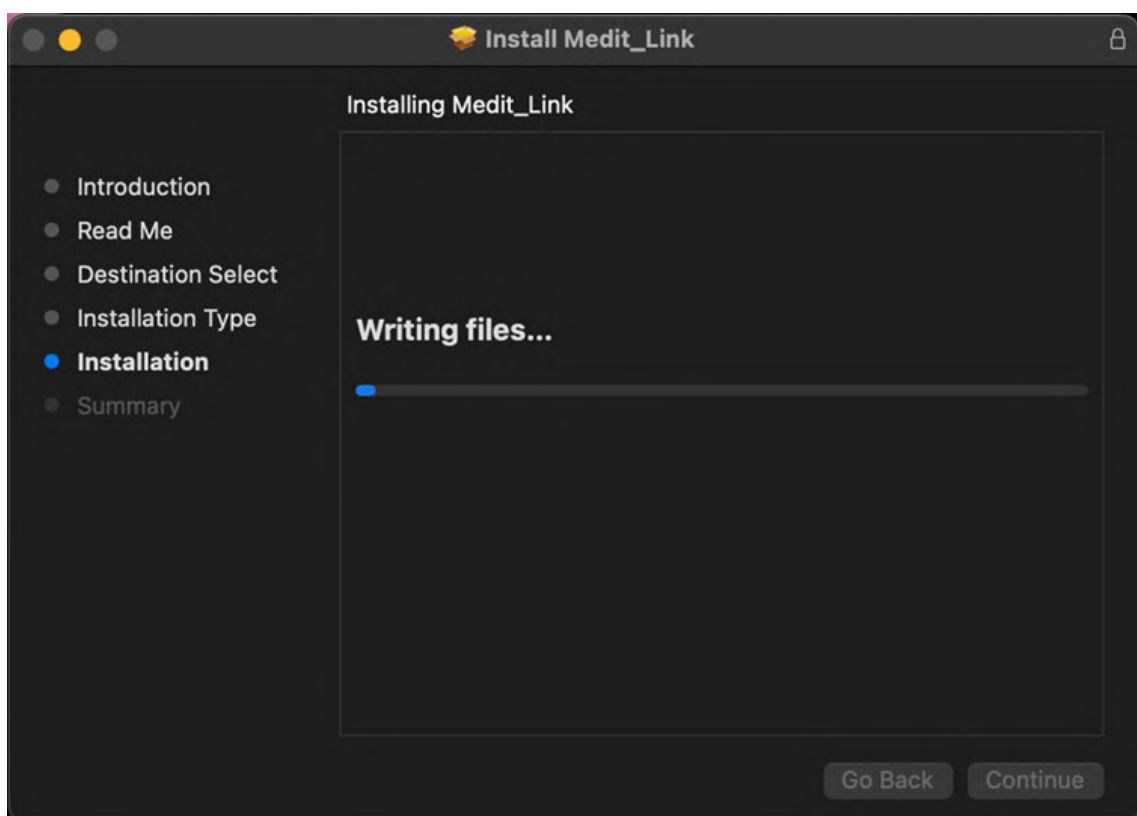


7. คลิก "ปิด" เพื่อออกจากหน้าต่างการติดตั้ง

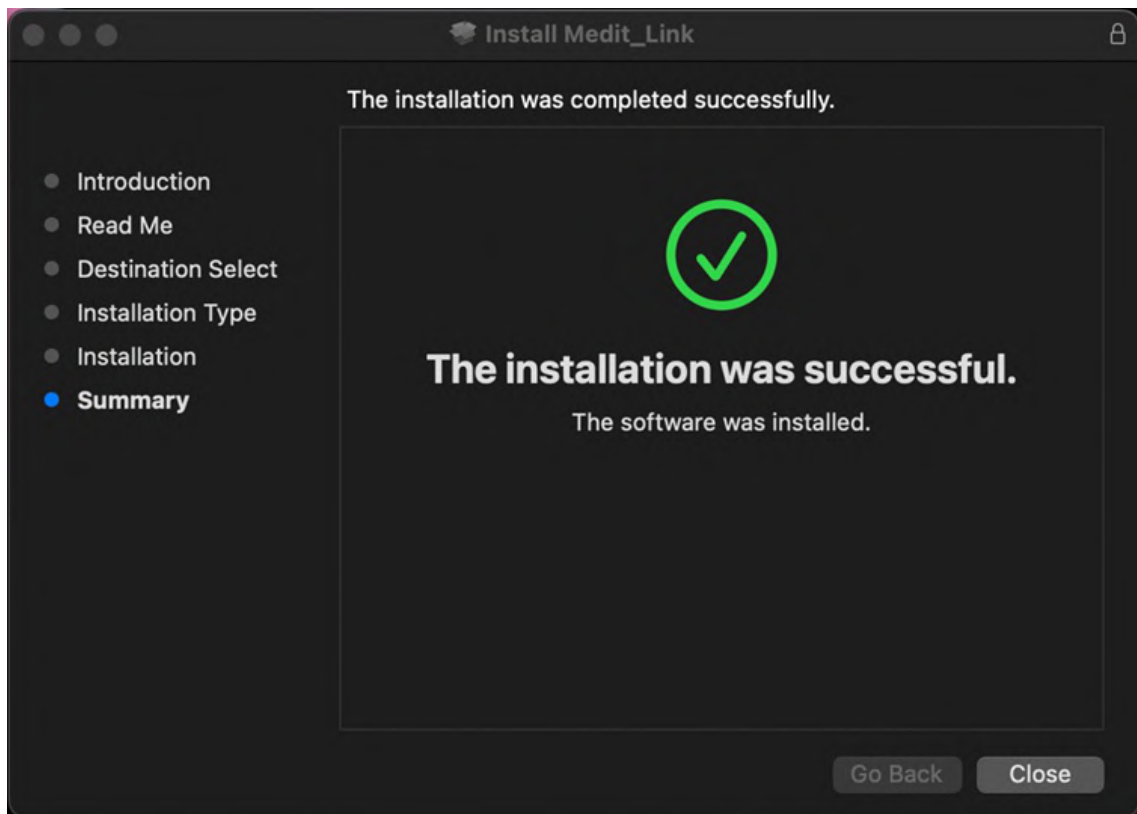

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ Medit Link

สมัครลงทะเบียน Medit Link ได้ที่ www.meditlink.com

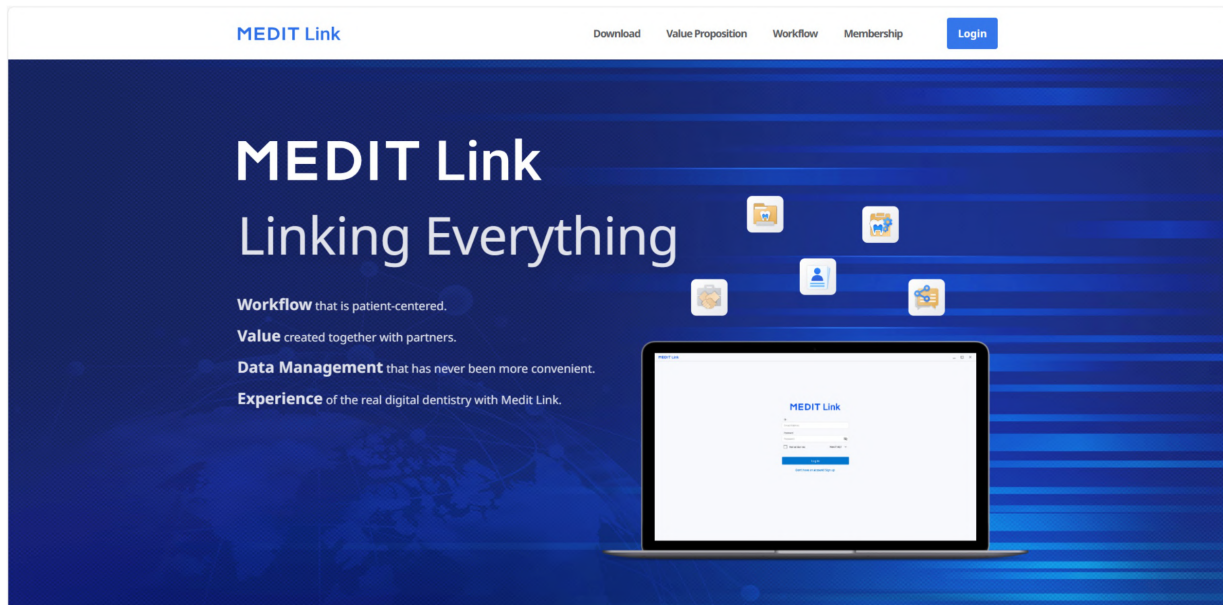

หมายเหตุ

ลงทะเบียน Medit Link China ได้ที่ www.meditlink.cn

สมัครลงทะเบียน

หากต้องการใช้บริการ Medit Link คุณต้องสมัครลงทะเบียนบัญชี คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีใน Medit Link ได้หลังจากการสร้างบัญชีเป็นคลินิกหรือห้องแล็บ

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งในสี่ประเภทบัญชีต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการพร้อมคุณสมบัติและสิทธิพิเศษอย่างเต็มรูปแบบหรือจำกัด โดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี

- คลินิก - ผู้ดูแลระบบ
- คลินิก-สมาชิก
- ห้องแล็บ - ผู้ดูแลระบบ
- ห้องแล็บ - สมาชิก

โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะเป็นตัวแทนขององค์กรของคุณและจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ Medit Link ได้อย่างเต็มที่ ในทางตรงกันข้าม บัญชีสมาชิกมีการเข้าถึงที่จำกัด

หากต้องการสมัครสมาชิก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ "ยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครลงทะเบียน ในหน้าเข้าสู่ระบบ

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.



English (United States)



2. หลังจากอ่านคำอธิบายที่ให้ไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" สำหรับประเภทบัญชีที่ต้องการ

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

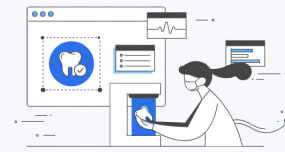

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

- ป้อนชื่อคลินิกหรือห้องแล็บ จากนั้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณต้องการ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

 - หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิก "ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน" เพื่อดูว่าชื่อที่ป้อนนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่
 - หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นสมาชิก ให้คลิก "ค้นหา" ผู้ดูแลระบบจะต้องลงทะเบียนองค์กรของคุณก่อนที่คุณจะสมัครลงทะเบียน
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เหลือแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

หมายเหตุ

หากคุณตกลงที่จะรับข้อมูลการตลาดระหว่างการลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Medit

- อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ
- เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้ลิงก์ที่ได้รับ

หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ

- ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณในหน้าเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. ป้อนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลทางธุรกิจของคุณ

Welcome, stage-test-wh!

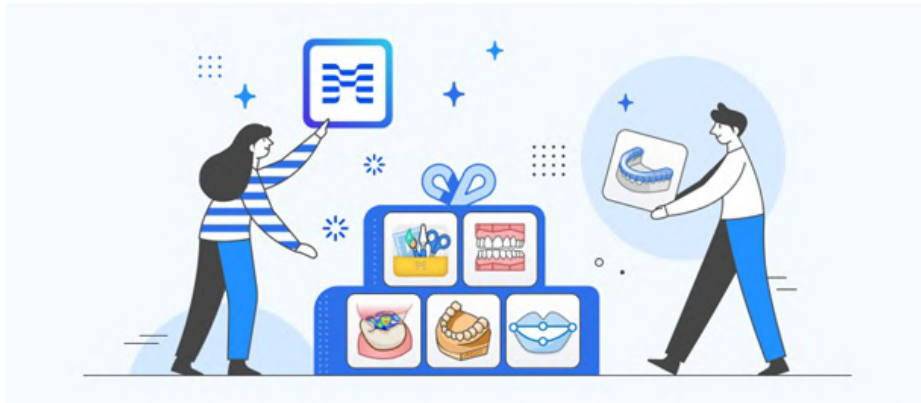

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

หมายเหตุ


หากต้องการใช้บริการ Medit Link ต้องป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ

- คลิกปุ่ม "ไปที่คลินิกของฉัน" หรือ "ไปที่ห้องแล็บของฉัน" และป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บ รวมถึงชื่อธุรกิจ ภาพปก/โลโก้ บริการที่คุณนำเสนอ ที่อยู่สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น
- สามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกป้อนในหน้าต้อนรับได้ทุกเมื่อที่เห็น My Info > คลินิกของฉันหรือห้องแล็บของฉัน ในเว็บไซต์ Medit Link

Dashboard

ภาพรวม Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

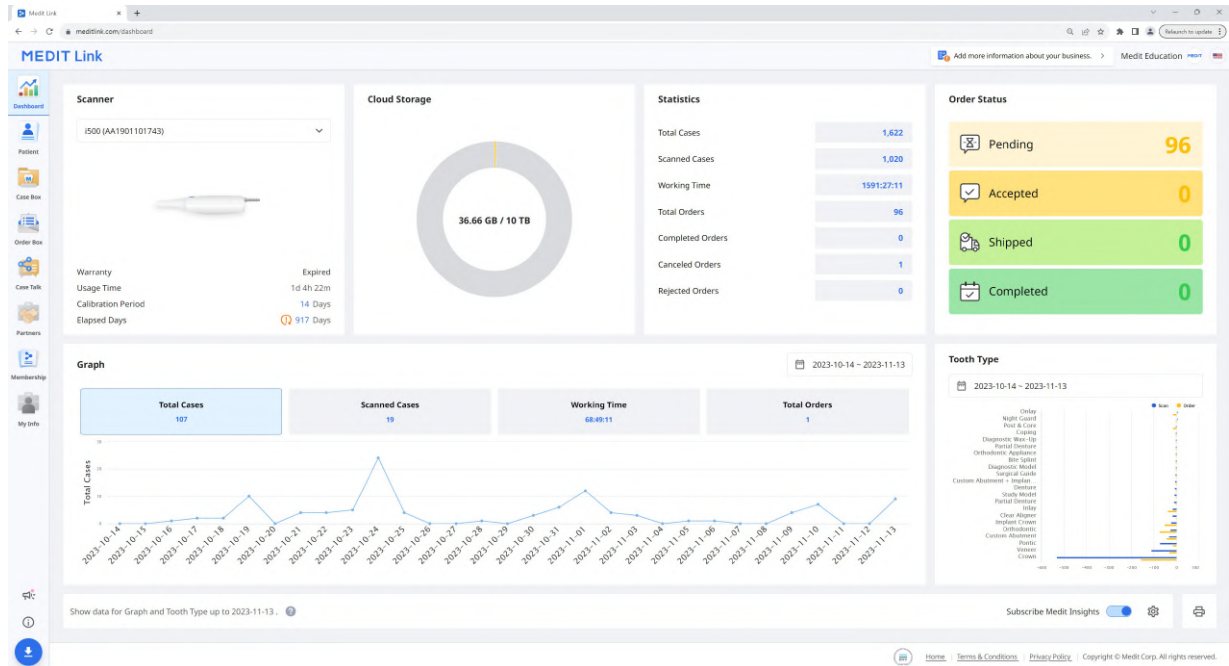

กราฟและแผนภูมิใน Dashboard แสดงสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำใน Medit Link

เครื่องสแกน	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการรับประกัน เวลาใช้งานเครื่องสแกน ช่วงเวลาการสอบเทียบ และเวลาที่ผ่านไปของการสอบเทียบ
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	แสดงความจุทั้งหมดของคลาวด์และปริมาณการใช้งาน
สถิติ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะงาน
สถานะคำสั่งทำ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะคำสั่งทำ
กราฟ	แสดงกราฟข้อมูลงานตามช่วงเวลา
ประเภทฟัน	แสดงสถิติจำนวนการสแกนและคำสั่งทำตามข้อมูลการรักษา


Medit Insights

Medit Insights เป็นบริการรายงานที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์สถิติการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้เป็นให้บริการใน Medit Link China

- Medit Insights

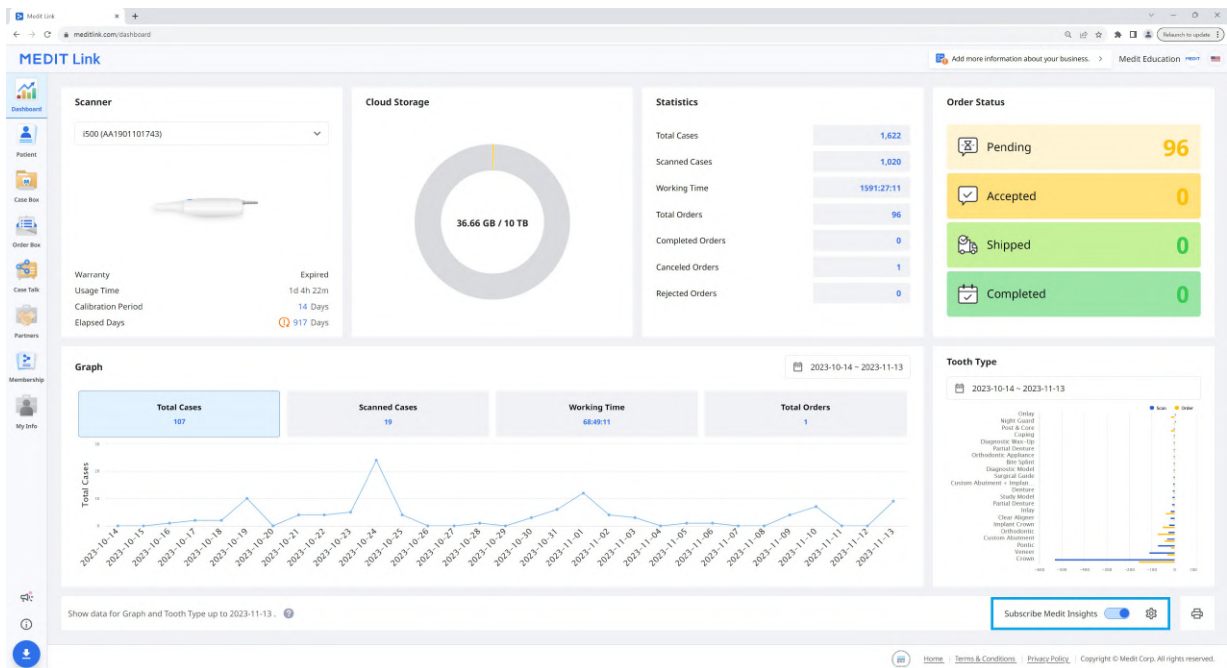

สมัครสมาชิก Medit Insights

คุณสามารถรับอีเมลรายงานได้ในวันที่สองของทุกเดือน ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการสมัครลงทะเบียนเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights"

หากคุณไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี Medit Link คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลอื่นเพื่อรับ Medit Insights ได้

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

ทุกวันที่ 2 ของเดือน คุณจะได้รับอีเมลพร้อมสถิติดังที่แสดงด้านล่าง

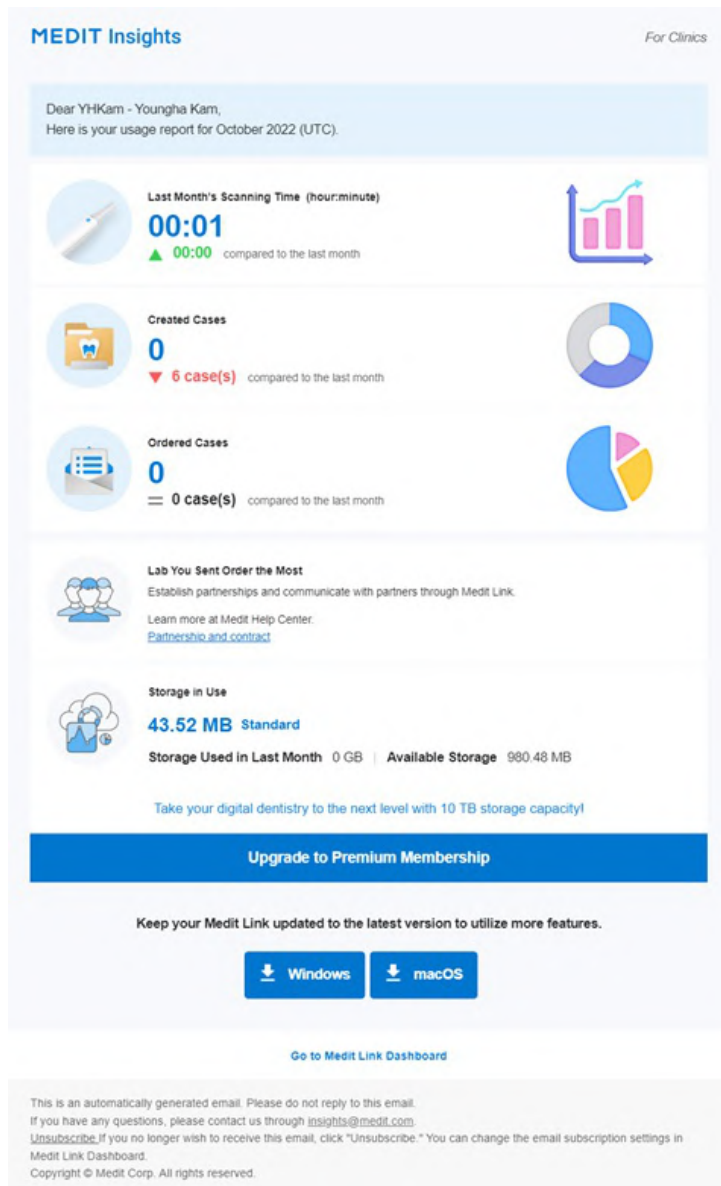

Banner	Medit เสนอเคล็ดลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นี่ * หากคุณไม่ต้องการเห็นแบนเนอร์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายข้อตกลงทางการตลาดและโปรโมชันใน My Info > บัญชีของฉัน
ข้อมูลทางสถิติ	ข้อมูลสถิติจะแสดง เช่น เวลาในการสแกน เคสที่ถูกสร้าง ห้องแล็บที่สั่งทำมากที่สุด เป็นต้น
ดาวน์โหลด Medit Link	ปุ่มนี้มีลิงก์ดาวน์โหลดของ Medit Link
Dashboard	ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล Dashboard ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Dashboard

ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights

ปิดการใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights" ใน Dashboard หรือคลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก" ในอีเมลที่ได้รับ

Patient

คุณสามารถจัดการเคสต่าง ๆ ตามชื่อผู้ป่วยและ ID ผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Medit Link จะถูกแสดงอยู่ในรายการ ทำให้การจัดการผู้ป่วยและเคสของพวกเขาง่ายขึ้น

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04		1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
h.k.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-11 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

ค้นหาผู้ป่วย

1. เลือกเกณฑ์การค้นหาของคุณระหว่างชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของรายชื่อผู้ป่วย

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. ป้อนชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยเพื่อค้นหาตามเกณฑ์การค้นหาที่เลือก
3. เฉพาะผู้ป่วยที่มีชื่อหรือ ID ผู้ป่วยที่ป้อนไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

Case Box/Work Box

Case Box (คลินิก) หรือ Work Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน Medit Link คุณสามารถดูไฟล์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก

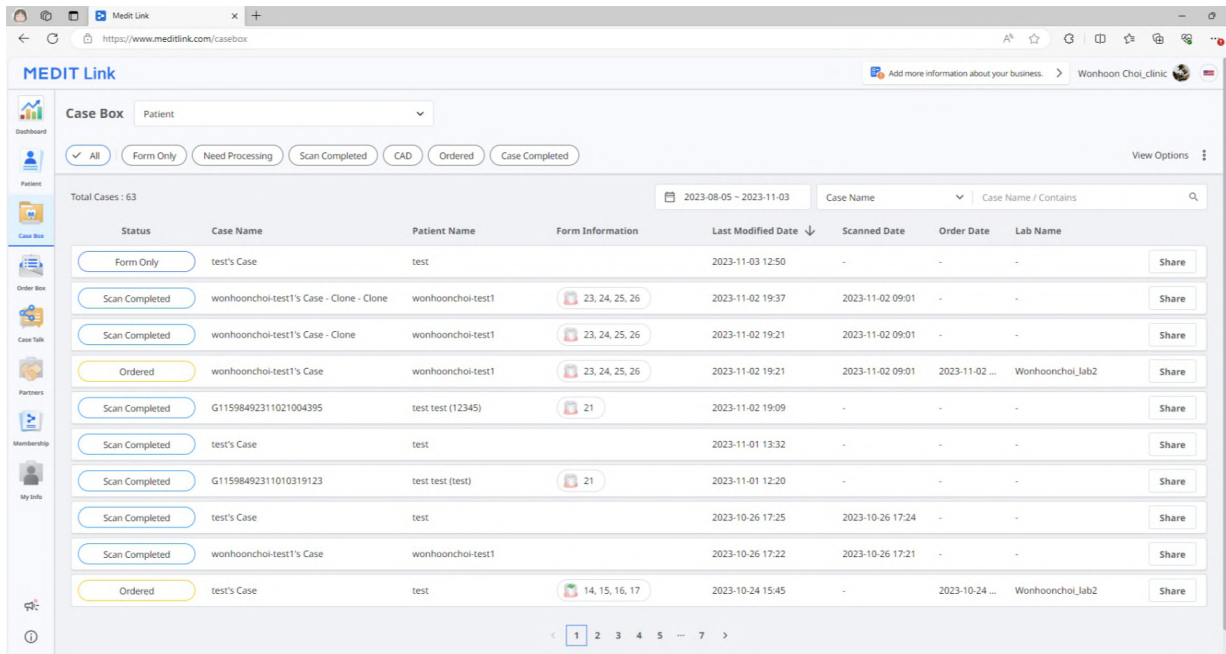


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and has a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A 'View Options' link is on the right. The table shows a list of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table has 10 rows of data, including cases with status 'Form Only', 'Scan Completed', and 'Ordered'. Each row has a 'Share' button on the right. At the bottom, there's a pagination bar showing '1' of 7 pages.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

การกรองเคส

กรองตามผู้ป่วย

คุณสามารถกรองเคสตามผู้ป่วยได้ มันมีประโยชน์เมื่อคุณค้นหาเคสสำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง

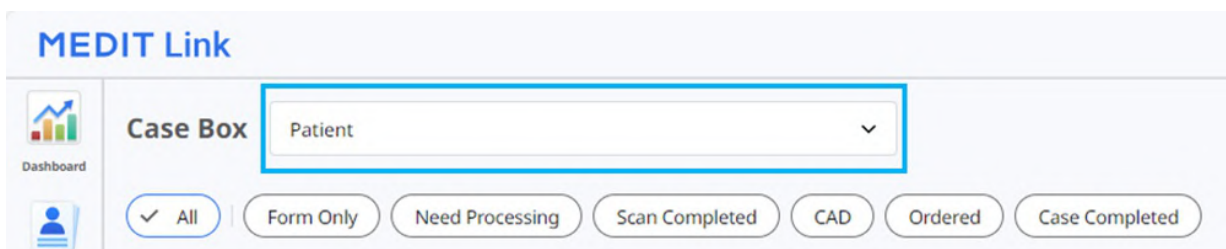

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it shows the 'Patient' option selected. Below the dropdown, there are filter buttons: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed.

1. ป้อนชื่อผู้ป่วยในช่องค้นหา

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. เลือกผู้ป่วยจากรายการผลการค้นหา

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. เฉพาะเคสสำหรับผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเคสที่คุณต้องการทำงานด้วย

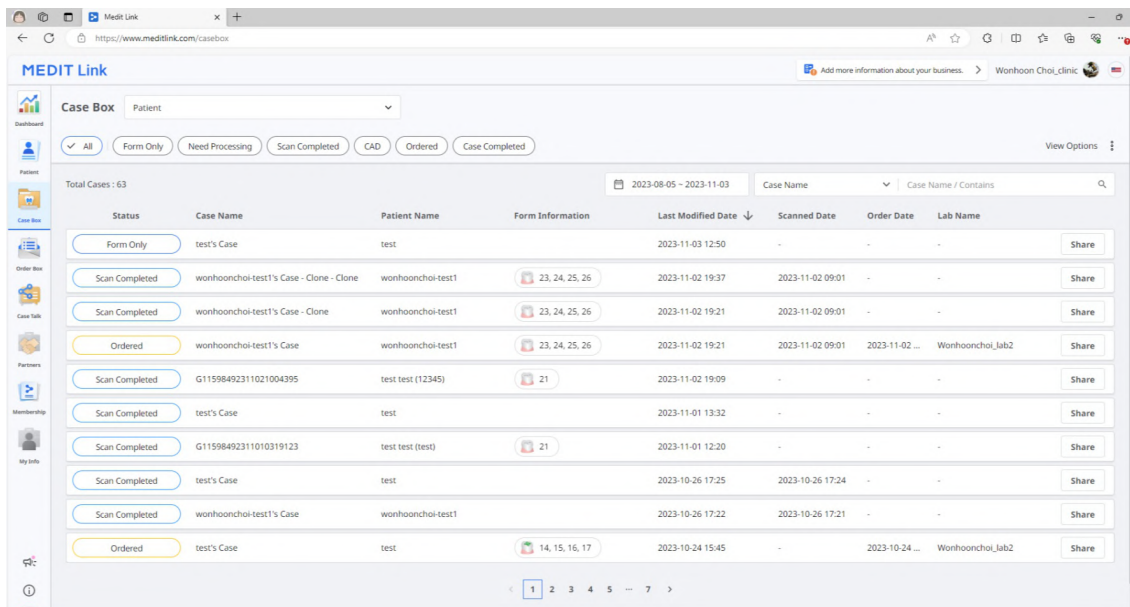

กรองตามสถานะ

คุณสามารถกรองเคสตามสถานะได้

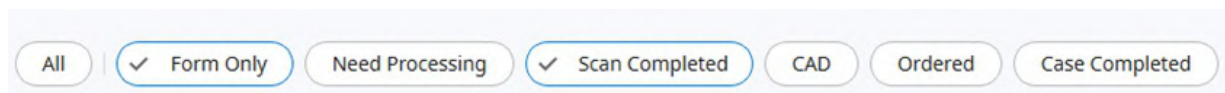

- ผู้ใช้สามารถคลิกสถานะที่พวกเขาต้องการดูได้ เบราร์เซอร์จะแสดงเฉพาะเคสที่มีสถานะที่เลือกไว้เท่านั้น
- ผู้ใช้สามารถเลือกได้หลายสถานะพร้อมกัน

ประเภทสถานะต่อไปนี้จัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (ห้องแล็บ)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

กรองตามระยะเวลา

คุณสามารถกรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายสุดท้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา



2. เลือกช่วงเวลา

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- ทั้งหมด: แสดงเคสทั้งหมด

- ระยะเวลาที่กำหนดเอง: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงเคสที่ถูกแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว
- วันนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดวันนี้
- เมื่อวาน: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อวาน
- 7 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- 30 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- 90 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- เดือนนี้: แสดงเคสของเดือนนี้
- เดือนก่อนหน้า: แสดงเคสของเดือนก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

การติดตามการค้นหา

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

ตัวเลือกการค้นหาต่อไปนี้จัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ
Work Box (ห้องแล็บ)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ

รายละเอียดเคส

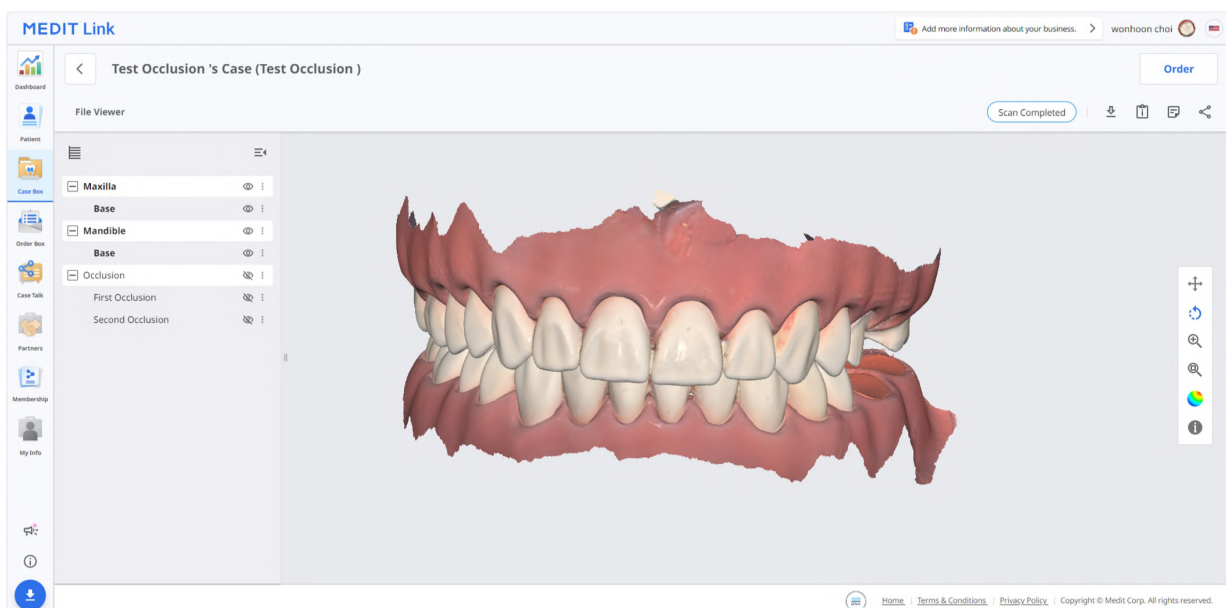

มีเครื่องมือการจัดการเคสต่อไปนี้อยู่ใน Case Box/Work Box

	สถานะเคส	แสดงสถานะของเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

Order Box/In Box

Order Box (คลินิก) หรือ In Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสที่ถูกสั่งทำในแอปพลิเคชัน Medit Link

รายละเอียดคำสั่งทำ

The screenshot displays the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' page in the Medit Link application. The page is divided into several sections:

- Header:** Shows the page title 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' and a 'Cancel Order' button.
- Order ID:** 5996137
- Patient Name:** WonhoonChoi_Lab_Stage
- Occlusion Test:** (Field with a dropdown arrow)
- Scanned Date:** 2023-04-20 PM 02:08
- Requested Delivery Date:** 2023-04-27 AM 08:15
- Expected Delivery Date:** 2023-04-27 AM 08:15
- Order List:** A table showing the details of the order.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	ให้ฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งทำ (การยอมรับ/การยกเลิก; การส่งมอบ/การรับ)
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: คำสั่งทำ โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์: สถานะของเคส, ทางลัดสำหรับข้อมูลโดยละเอียด, ข้อมูลเคส, บันทึกและแท็ก เป็นต้น
5	แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ รวมถึงหมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อพันธมิตร วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ และบันทึกและแท็ก
6	แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำและสถานะการส่งมอบ


แท็บใน Order Box/In Box

คำสั่งทำ	โปรแกรมดูไฟล์
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ เช่น ID คำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อบัญชี วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ บันทึกและแท็ก	ดูไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการสแกน/CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลเฉพาะที่คุณระบุ ทุกคนที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน "Case Talk" ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

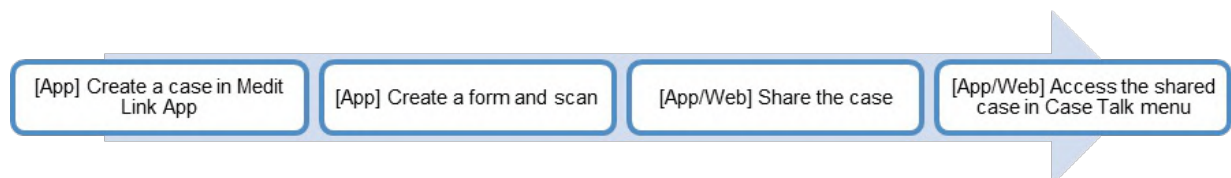


สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย


การสร้าง Case Talk

คุณสามารถสร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังเคสที่สร้างขึ้นใน Case Box/Work Box ได้

1. ค้นหาเคสที่คุณต้องการแชร์และคลิกปุ่ม "แชร์" ทางด้านขวา

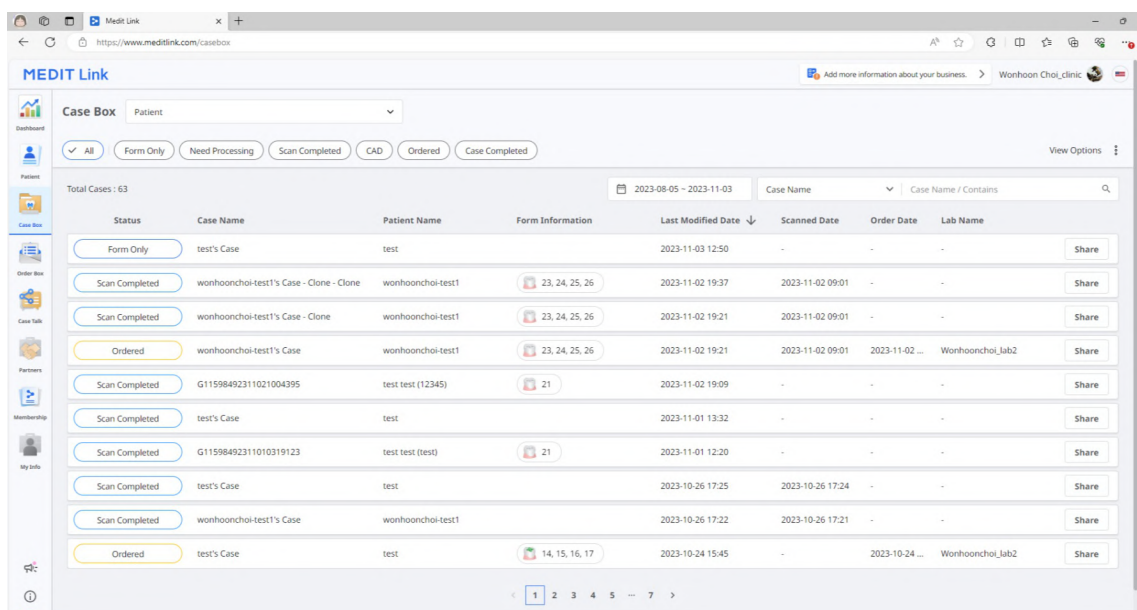

2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแชร์

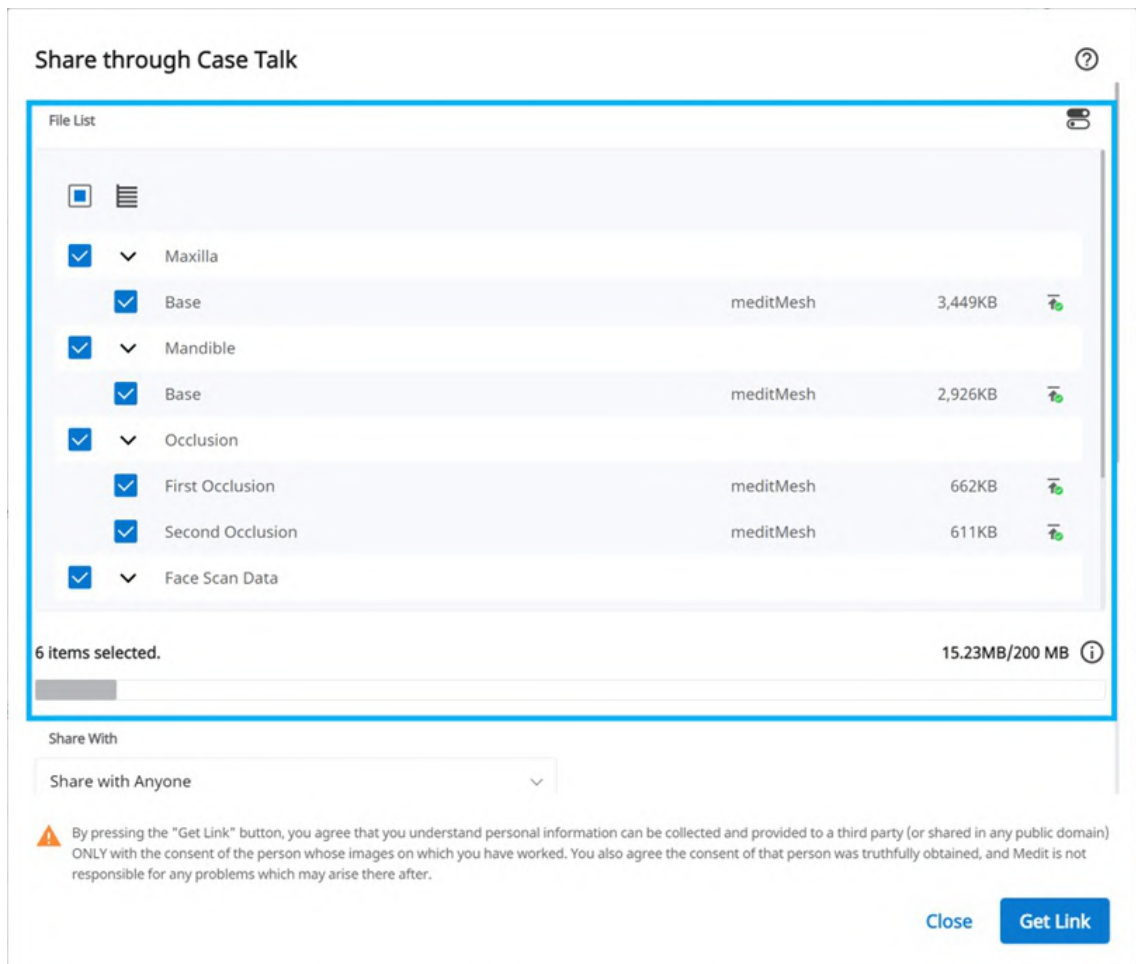

3. ตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์
4. คลิก "รับลิงก์" เพื่อสร้างลิงก์ที่ถูกรับ

การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

✉

+

☰

📘

Create a shared link and share it with specific people.

📅

Expiration Date

2022-06-28

🔒

PIN Code

Enter PIN Code

📘

You can extend the period up to 90 days from today.

📘

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☑

Share the patient's name

☑

Grant Download Permission [Premium Feature](#)

📘

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

📘

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☑

Allow comments

📘

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

💬

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

แชร์กับ	• แชร์กับใครก็ตาม สร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ คุณสามารถแชร์ไฟล์กับใครก็ได้ • แชร์กับบุคคลเฉพาะ สร้างและส่งลิงก์ที่แชร์ไปยังบุคคลเฉพาะ
แชร์ทาง	หากคุณเลือก "แชร์กับบุคคลเฉพาะ" คุณสามารถแชร์ลิงก์กับบุคคลเฉพาะได้หลายวิธี • ท้ายอีเมล • SMS • พันธมิตร
วันหมดอายุ	กำหนดวันหมดอายุของลิงก์ หลังจากที่คุณแชร์ลิงก์หมดอายุ คนที่คุณแชร์ด้วยจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อีกต่อไป คุณสามารถขยายระยะเวลาหมดอายุได้ถึง 90 วันนับจากวันนี้
รหัส PIN	ตั้งรหัสการเข้าถึง 6 หลักเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
แชร์ชื่อผู้ป่วย	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ทุกคนที่มีลิงก์จะเห็นชื่อของผู้ป่วย
ให้อนุญาตการดาวน์โหลด	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ทุกคนที่มีลิงก์จะดาวน์โหลดไฟล์ได้
อนุญาตความคิดเห็น	• หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณสามารถสื่อสารผ่านลิงก์ที่ถูกแชร์ได้ • หากคุณไม่ทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้รับจะสามารถดูได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นของตนเองได้
ความคิดเห็น	คุณสามารถฝากข้อความไว้ในเซกชันความคิดเห็นได้

รายละเอียด Case Talk

คุณสามารถดูไฟล์ในเคสที่ถูกแชร์ได้ มีฟังก์ชันต่อไปนี้อยู่ในหน้ารายละเอียด Case Talk

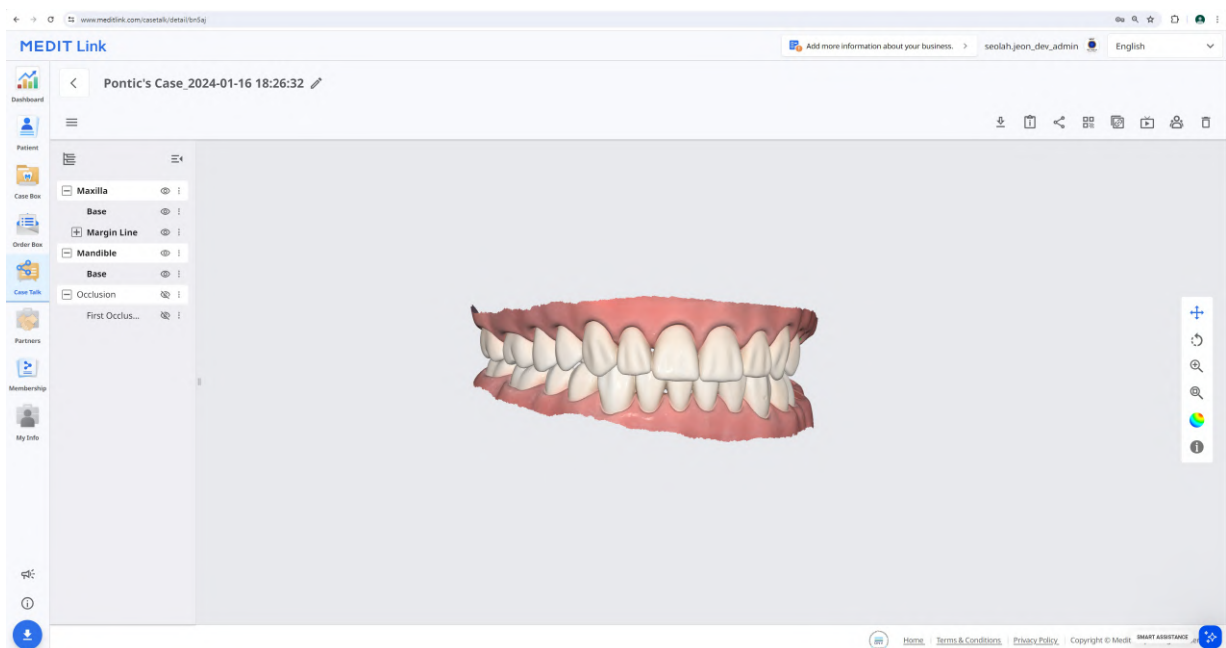

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	แชร์เคสนี้ด้วยรหัส QR
	คัดลอก ลิงก์	คัดลอกลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังคลิปบอร์ด ลิงก์ที่ถูกคัดลอกจะแสดงไฟล์ที่ถูกแชร์บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกขังโครโมซัมกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงลิงก์ที่ถูกแชร์
	ลบ	ลบลิงก์ที่ถูกแชร์ จะไม่สามารถเข้าถึงลิงก์ที่แชร์ซึ่งถูกลบได้อีกต่อไป

หมายเหตุ


บริการต่อไปนี้อาจไม่ให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม

Web Viewer

คุณสามารถดูข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่าน Case Talk ได้ในเว็บเบราว์เซอร์

สามารถสื่อสารกับผู้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์ได้โดยใช้คำอธิบายประกอบและความคิดเห็น

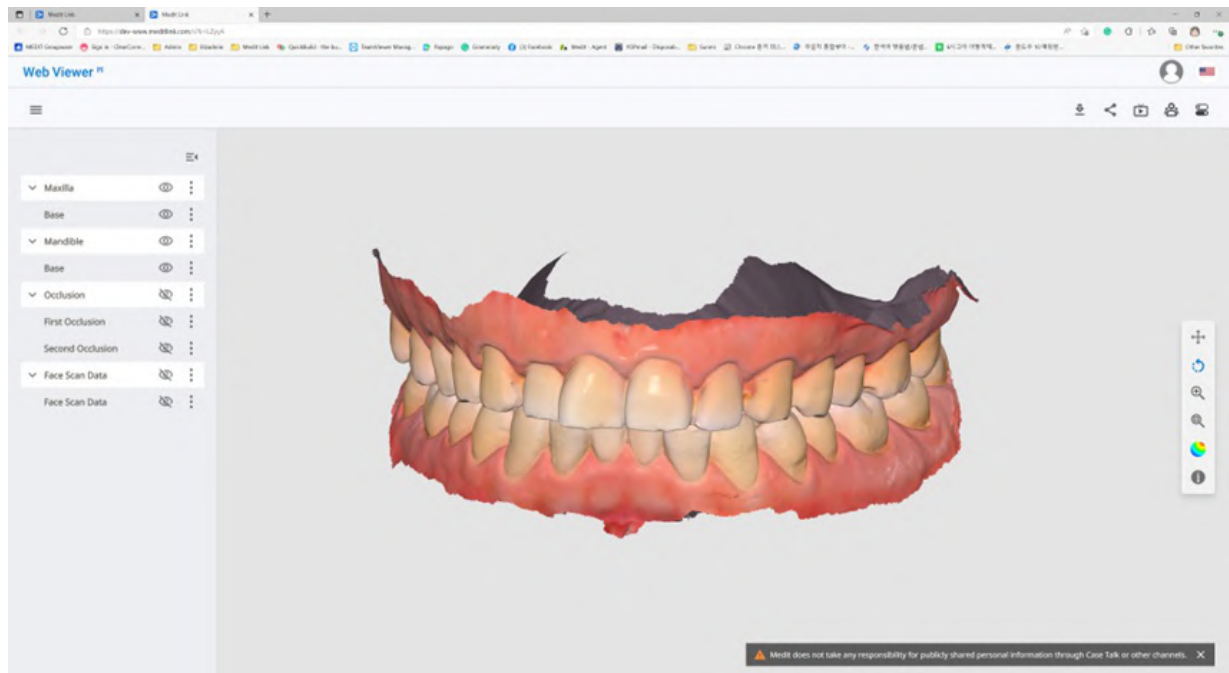

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังพีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	แชร์เคสนี้ด้วยรหัส QR
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกซิงโครไนซ์กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์
	การติดป้ายกำกับพื้นที่	เปลี่ยนระบบการติดป้ายกำกับพื้นที่


หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม

คำอธิบายประกอบ

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในโมเดล 3D ได้ ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถดูคำอธิบายประกอบที่คุณเพิ่มได้

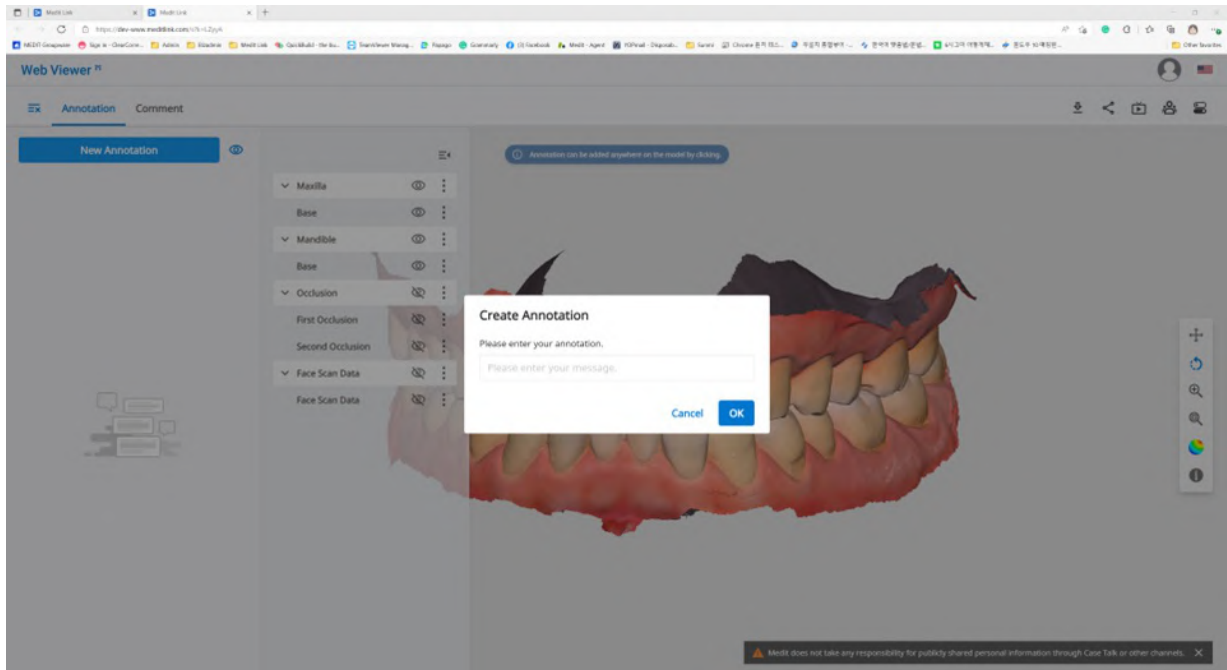

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- คำอธิบายประกอบ

1. ค้นหาไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกแท็บ "คำอธิบายประกอบ" ใช้ปุ่ม "คำอธิบายประกอบใหม่" เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่ใดก็ได้บนข้อมูลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
2. พิมพ์ข้อความ จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก

This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and a subtitle 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. คุณสามารถใช้คำอธิบายประกอบเป็นช่องทางการสื่อสารง่าย ๆ ได้ คลิกคำอธิบายประกอบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการตอบกลับและกด "ส่ง"

This screenshot shows a comment thread. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with a trash icon and a close icon. Below this is 'Annotation 1' followed by a blue square icon with the number '1' and the timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

ความคิดเห็น

คุณสามารถสื่อสารกับผู้ที่ใช้สามารถเข้าถึงลิงก์ได้ผ่านแท็บ "ความคิดเห็น" ในเมนู Web Viewer

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- ความคิดเห็น

การแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์

คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณแบบเรียลไทม์ได้

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด

1. คลิก "สด" เพื่อแชร์หน้าจอ Web Viewer ของคุณกับผู้ที่ใช้เชื่อมต่อ





2. คลิก "ตกลง" เพื่อเริ่มต้นแชร์หน้าจอของคุณ
3. บุคคลอื่นที่เข้าถึงลิงก์จะต้องยอมรับการแชร์หน้าจอ
4. หน้าจอของผู้ใช้ที่เริ่มการแชร์หน้าจอจะถูกแสดงโดยซิงค์กับหน้าจอของผู้ที่ได้รับคำขอ


แผนผังข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มและถูกแสดงตามคุณลักษณะในแผนผังข้อมูล คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูล ปรับความทึบ และอื่นๆ ได้

การควบคุมแผนผังข้อมูล

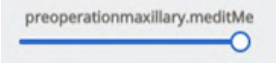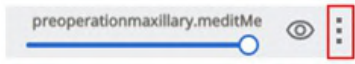แสดง/ซ่อน	คลิกไอคอนรูป 'ดวงตา' เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลจากมุมมอง ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลเป็นกลุ่มหรือแต่ละไฟล์
ความทึบ	วางเมาส์เหนือองค์ประกอบที่มองเห็นได้เพื่อดูแถบสไลด์ความทึบ ปรับแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของข้อมูล 
เมนูแบบขยาย	มีเมนูแบบขยายอยู่ทางด้านขวาของแต่ละองค์ประกอบแผนผังข้อมูล มันประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:  • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นข้อมูลปัจจุบัน • ซ่อน: ซ่อนข้อมูลปัจจุบัน

การควบคุมโมเดล 3D

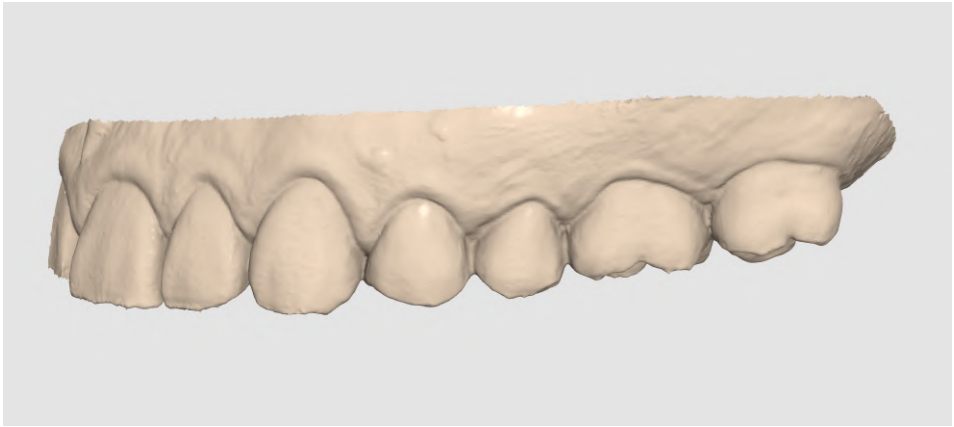*	แพน	ย้ายโมเดล
o	หมุน	หมุนโมเดล
q	ซูมเข้า/ออก	ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
q	ซูมปรับพอดี	จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
โหมดการแสดงข้อมูล	แมตต์	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟิสิกส์แมตต์ (การเรนเดอร์ Phong) 
	โมโนโครม	ดูข้อมูลในสีเดียว 

พันธมิตร

คุณสามารถค้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อขอเป็นพันธมิตรและดูรายชื่อพันธมิตรปัจจุบันได้


หมายเหตุ

บริการที่ใช้ Google Maps ไม่พร้อมให้บริการบน Medit Link China

ค้นหาพันธมิตร


คุณสามารถค้นหาผู้ใช้ Medit Link ได้ตามชื่อธุรกิจและ/หรือที่อยู่ของพวกเขา

ในผลการค้นหา คุณสามารถส่งคำขอเป็นพันธมิตรไปยังธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วยได้

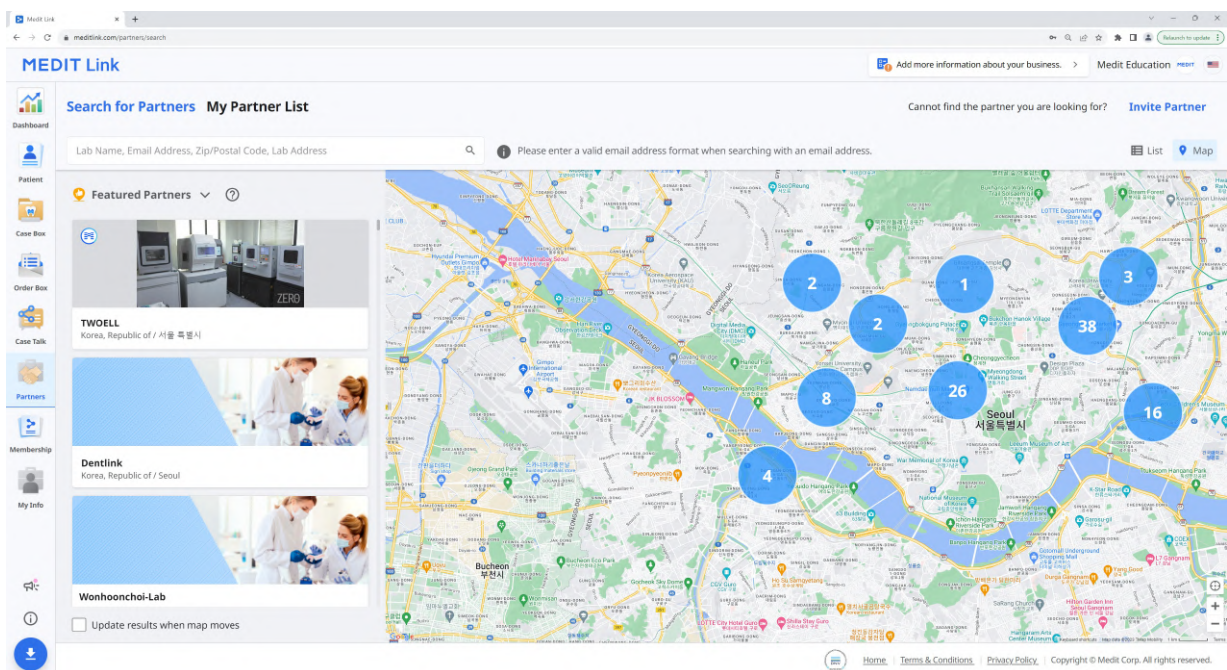

รายชื่อพันธมิตรของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบการเป็นพันธมิตรปัจจุบันของคุณกับธุรกิจพันธมิตรที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในรายชื่อพันธมิตรของฉัน

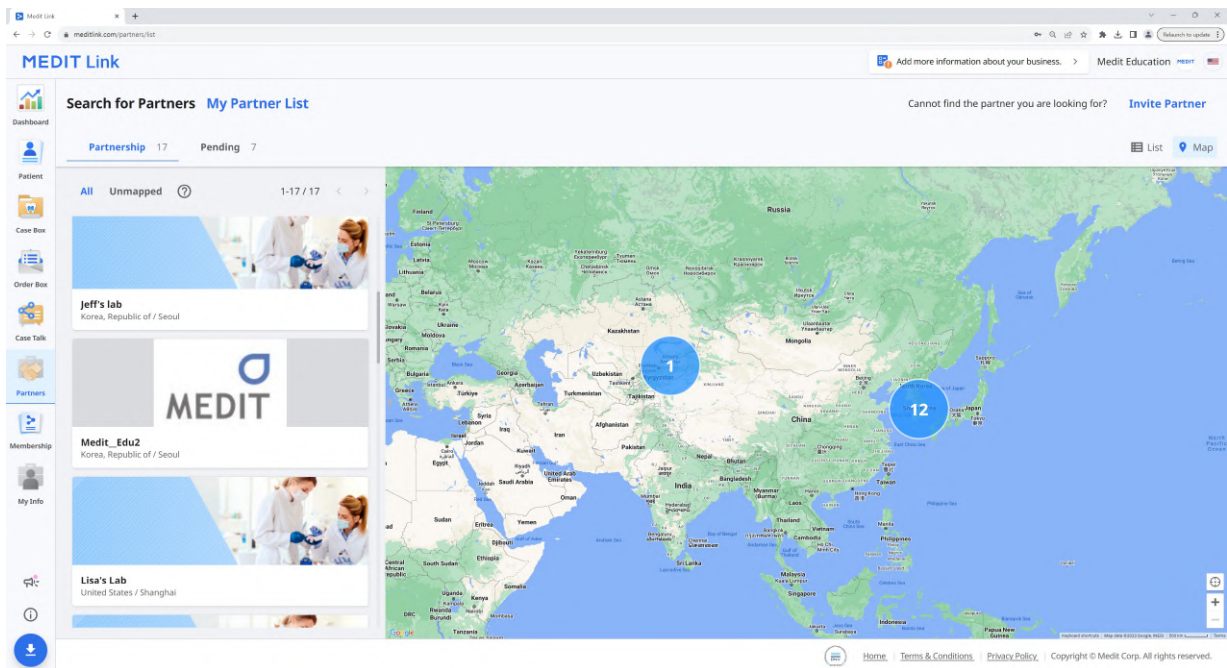

คำเชิญเป็นพันธมิตร

หากคุณมีคลินิกหรือห้องแล็บที่ต้องการร่วมงานด้วย คุณสามารถเชิญพวกเขาให้เข้าร่วม Medit Link ได้ การเป็นพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขายอมรับคำเชิญ

1. คลิก "เชิญพันธมิตร" ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วย และส่งคำเชิญพร้อมกับคำขอเป็นพันธมิตร



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. เมื่อองค์กรที่ได้รับเชิญยอมรับคำเชิญและสมัครลงทะเบียนสำหรับ Medit Link การเป็นพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

Membership

การเป็นสมาชิก

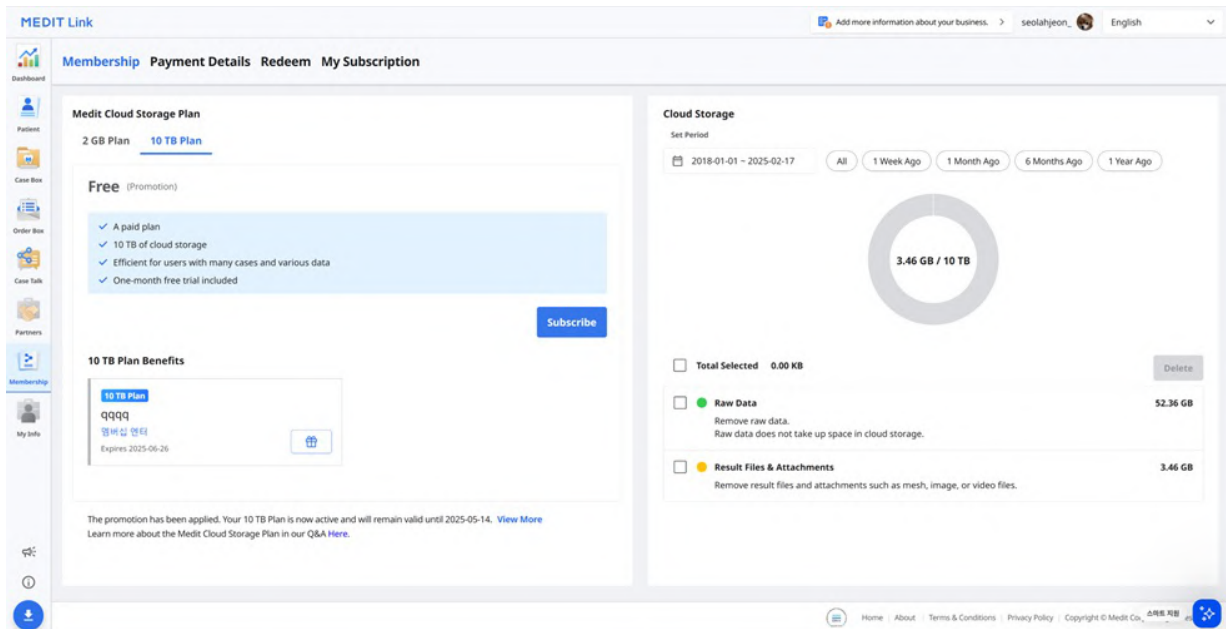

Medit Cloud Storage Plan

คุณสามารถดูสิ่งที่แผนแต่ละแผนนำเสนอ ซึ่งรวมถึงคูปองส่วนลดและบัตรกำนัล และสถานะการเป็นสมาชิกของคุณในปัจจุบัน คุณสามารถอัปเกรดแผนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link นำเสนอแผนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ดังต่อไปนี้:

2 GB Plan

- แผนมาตรฐานฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ที่เข้าสู่ระบบทุกคน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2 GB
- สำหรับผู้ใช้ใหม่

10 TB Plan

- แผนแบบชำระเงิน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 TB
- สำหรับผู้ใช้ที่มีหลายเคสและข้อมูลหลากหลาย
- ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน


	2 GB Plan	10 TB Plan
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	2 GB	10 TB
ค่าธรรมเนียมรายเดือน	ไม่เสียเงิน	\$9.99/เดือน
* พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะไม่นับข้อมูลดิบรวมไปในพื้นที่ที่ถูกใช้		

หมายเหตุ

มีแผนการเป็นสมาชิกอยู่ใน Medit Link China คุณสามารถพลัดเปลี่ยนกับ 10 TB Plan ได้ฟรีจนกว่าจะมีการเปิดตัวคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในเซกชันด้านขวา คุณสามารถจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้

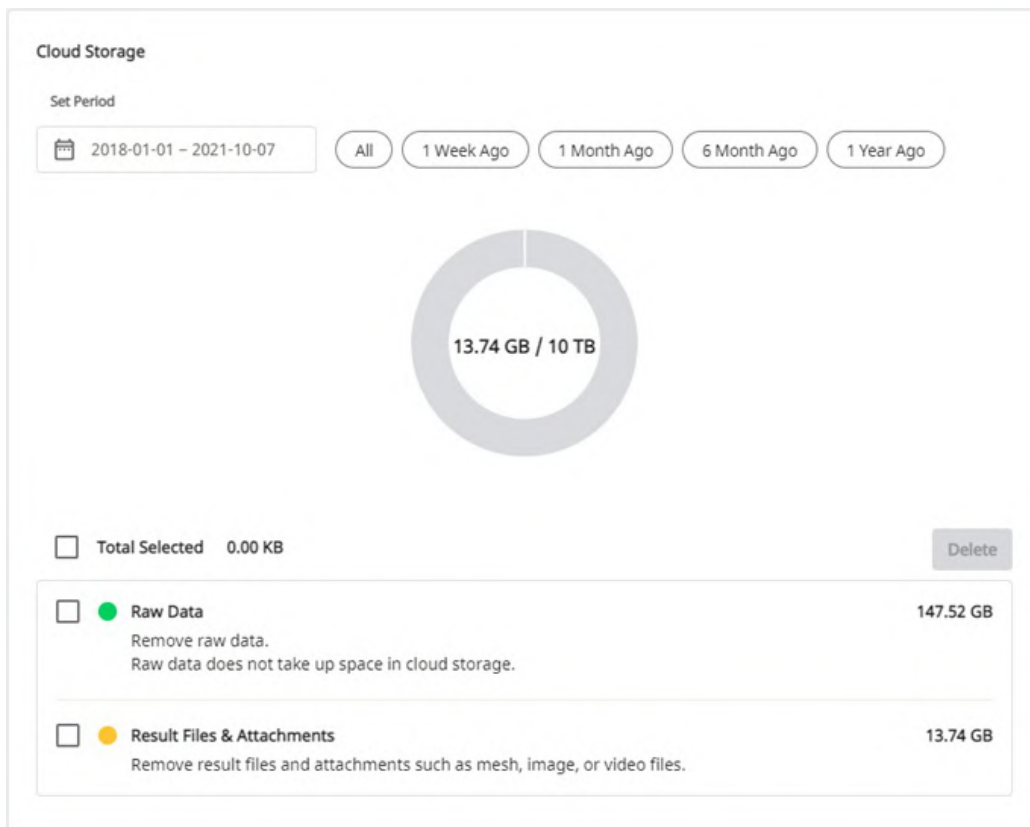

กำหนด ระยะเวลา	กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าว • ทั้งหมด: ดูไฟล์ทั้งหมด • 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสร้าง • 1 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนหลังจากการสร้าง • 6 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหกเดือนหลังจากการสร้าง • 1 ปีที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีหลังจากการสร้าง
ข้อมูลดิบ	ข้อมูลดิบไม่ใช่พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นมันจะไม่อยู่ในแผนภูมิวงกลม แต่คุณสามารถจัดการข้อมูลดิบได้จากที่นี่หากจำเป็น เช่น ลบมันออกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นต้น
ผลลัพธ์ และไฟล์ แนบ	ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบใช้พื้นที่บนคลาวด์ หากคลาวด์เต็ม คุณสามารถรักษาความปลอดภัยพื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้ออกจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มพื้นที่

สมัครสมาชิก

หากในปัจจุบันคุณใช้ 2 GB Plan หรือ 10 TB Plan พร้อมรหัสแลกรับ คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิก 10 TB Plan ได้

การชำระเงินผ่านบริการ Stripe (www.stripe.com) ได้เสร็จสิ้น

1. ไปที่ การเป็นสมาชิก > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan และคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. ตรวจสอบคำอธิบาย 10 TB Plan และคลิก "สมัครสมาชิก" อีกครั้ง

Subscribe Membership

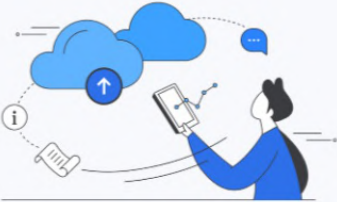

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly


- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขและข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงิน จากนั้นคลิก "สมัครสมาชิก"

Cancel Subscription

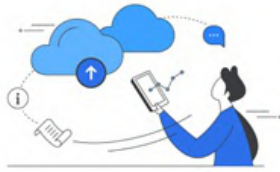

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก ให้คลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก" อีกครั้งในหน้าต่างป๊อปอัปใหม่

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. การสมัครสมาชิกของคุณได้ถูกยกเลิกแล้ว

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. แผนของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็น 2 GB Plan นับจากวันชำระเงินถัดไป และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะถูกจำกัดไว้ที่ 2 GB หากเกินความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไฟล์จะไม่ได้รับการสำรอง และฟังก์ชันคำสั่งทำและการแชร์จะไม่พร้อมใช้งาน

การสมัครสมาชิกของฉัน

คุณสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ สมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกได้จากการสมัครสมาชิกของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่การชำระเงินตามกำหนดครั้งถัดไป

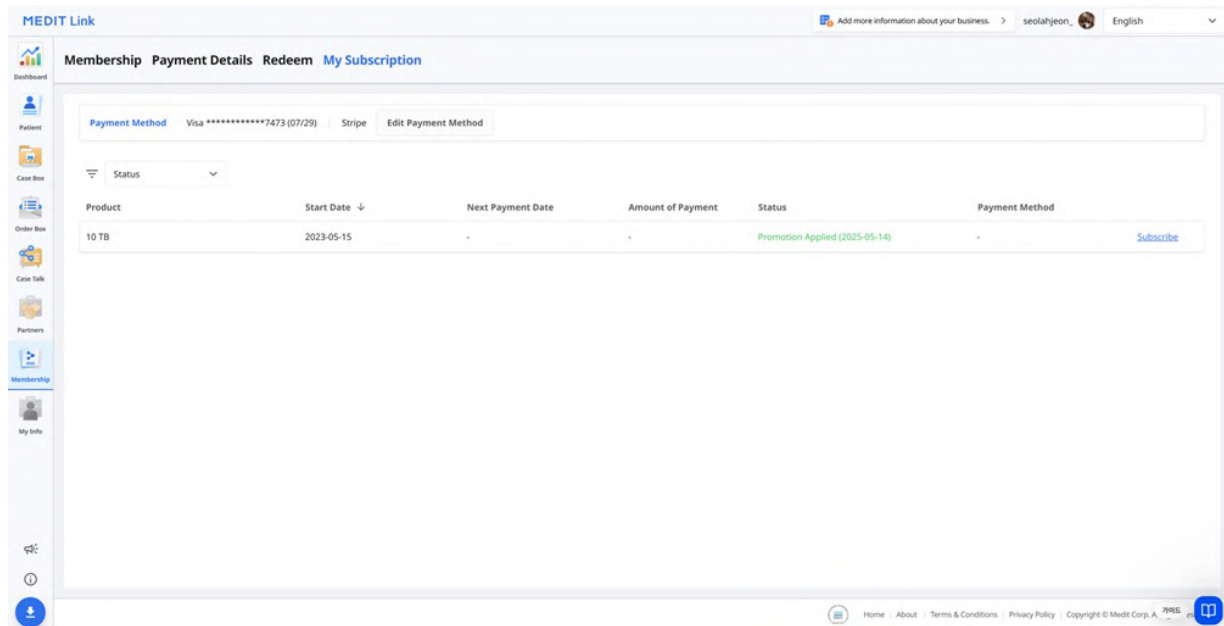

รายละเอียด


รายการ	คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์	แสดงประเภทของการสมัครสมาชิก
วันที่เริ่มต้น	แสดงเวลาที่มีการสมัครสมาชิกหรือโปรโมชั่นเริ่มต้น
วันที่ชำระเงินครั้งถัดไป	แสดงวันที่ชำระเงินครั้งถัดไป
จำนวนการชำระเงิน	แสดงจำนวนการชำระเงิน
สถานะ	การสมัครสมาชิก - ใช้งานอยู่: การสมัครสมาชิกมีการใช้งานอยู่ - กำลังหมดอายุ: การสมัครสมาชิกจะไม่ต่ออายุในวันชำระเงินครั้งถัดไปและจะถูกยกเลิก - หมดอายุแล้ว: การสมัครสมาชิกได้สิ้นสุดแล้ว โปรโมชั่น - ใช้โปรโมชั่นแล้ว: รหัสโปรโมชั่นถูกใช้งานแล้ว - โปรโมชั่นกำลังดำเนินการ: รหัสโปรโมชั่นกำลังรอการเปิดใช้งาน - โปรโมชั่นหมดอายุแล้ว: รหัสโปรโมชั่นหมดอายุแล้ว
วิธีการชำระเงิน	แสดงหมายเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรที่ใช้ชำระเงิน

สมัครสมาชิกอีกครั้ง


รายการ	คำอธิบาย
แผนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	คลิกปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อสมัครสมาชิก 10 TB Plan อีกครั้ง
แผนการสมัครสมาชิกแอป	ลงชื่อเข้าใช้แอปเพื่อสมัครสมาชิกอีกครั้ง

วิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน

1. คลิก "แก้ไขวิธีการชำระเงิน"

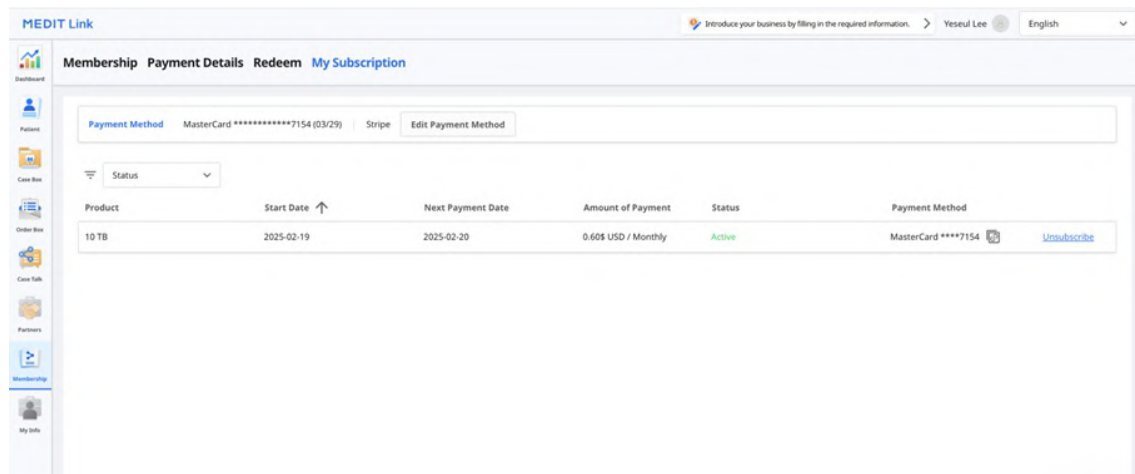

2. คลิก "เพิ่มวิธีการชำระเงิน"

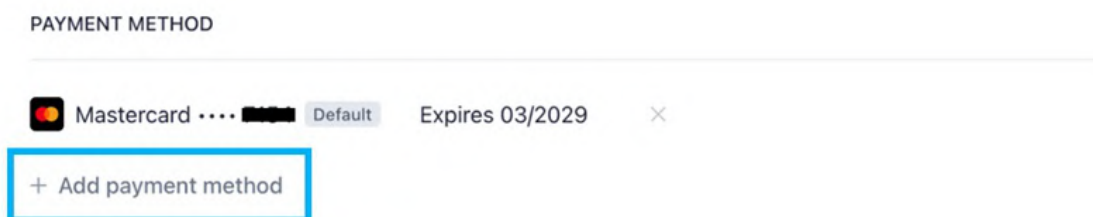

3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้วคลิก "เพิ่ม"

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

VISA

Expiration date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. วิธีการชำระเงินที่ถูกเพิ่มใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและถูกใช้สำหรับการชำระเงินครั้งถัดไป

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

1. คลิกไอคอนเมนูแบบขยายถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนในหน้าต่างโต้ตอบการเรียกเก็บเงิน

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

2. คลิก "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" เพื่อตั้งค่าบัตรที่เลือกเป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้น

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			
Make default Delete			

แลกรับ

คุณสามารถแลกใช้รหัสโปรโมชันเพื่อเข้าถึง 10 TB Plan ได้ฟรี

รายละเอียด

MEDIT Link Add more information about your business. > seolah_jeon_dev_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Redeem Code

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status
4 Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting

Cancel

1

Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. GUIDES

รายการ	คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์	แสดงแผนที่โปรโมชันจะถูกใช้
โปรโมชัน	แสดงชื่อของโปรโมชัน
หมายเลขรหัส	แสดงหมายเลขรหัส
วันที่ลงทะเบียน	แสดงวันที่ได้ลงทะเบียนรหัส
จาก	แสดงวันที่เริ่มต้นของโปรโมชัน
ไปยัง	แสดงวันหมดอายุของโปรโมชัน
สถานะ	- Registered: รหัสโปรโมชันได้ถูกเพิ่มและพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้ - Waiting: รหัสโปรโมชันกำลังรอการเปิดใช้งาน - Activated: รหัสโปรโมชันเปิดใช้งานอยู่ตอนนี้ - Used: รหัสโปรโมชันได้หมดอายุแล้ว

ลงทะเบียนรหัสแลกรับ

- กรอกรหัสแลกรับ และคลิก "ลงทะเบียน"
- อ่านประกาศและเลือก "ลงทะเบียน" หรือ "ใช่" ในกล่องโต้ตอบป๊อปอัพ
 - ลงทะเบียน:** ลงทะเบียนรหัสแลกรับ คุณสามารถเปิดใช้งานและใช้รหัสแลกรับได้ในภายหลังหลังจากการลงทะเบียน
 - ใช่:** ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสแลกรับ ส่วนลดโปรโมชันจะมีผลในทันที

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

เปิดใช้งานรหัสแลกครับ

คุณสามารถลงทะเบียนรับรหัสแลกครับได้หลายรหัส แต่คุณต้องเปิดใช้งานรหัสแลกครับที่คุณต้องการใช้

- คลิกปุ่ม "เปิดใช้งาน" ที่อยู่ถัดจากรหัสที่คุณต้องการใช้
 - หากไม่มีรหัสที่มีสถานะ "Activated" รหัสที่คุณเลือกจะถูกใช้ในทันที
 - หากมีรหัสที่ถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว รหัสที่ถูกเลือกใหม่จะเปลี่ยนเป็นสถานะ "Waiting" เมื่อรหัสแลกครับที่ถูกเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหมดอายุ รหัสแลกครับใหม่ในสถานะ "Waiting" จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

สามารถเปิดใช้งานรหัสแลกครับได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น และมีเพียงรหัสเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในสถานะ "Waiting"

รายละเอียดการชำระเงิน

คุณสามารถดูประวัติการสมัครสมาชิกและการชำระเงินของคุณได้ในแท็บรายละเอียดการชำระเงิน

MEDIT Link

Introduce your business by filling in the required information.

Yeseul Lee

English

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

All

Membership

Medit Apps

2024-11-21 ~ 2025-02-19

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2025-02-19	10 TB	Subscription	2025-02-19 ~ 2025-02-20	Monthly payment	0.00 \$ (USD)	Payment Completed

1

스마트 지원

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © MEDIT Corp. All rights reserved.

รายการ	คำอธิบาย
วันชำระเงิน	แสดงวันที่ชำระเงิน
ผลิตภัณฑ์	แสดงแผนหรือแอปที่ซื้อ
ประเภทการชำระ เงิน	แสดงประเภทของการชำระเงิน: • การสมัครสมาชิก • การชำระเงินครั้งเดียว
ระยะเวลา	แสดงระยะเวลาการสมัครสมาชิก
รายละเอียด	แสดงข้อมูลการชำระเงินอย่างละเอียด
จำนวนการชำระ เงิน	แสดงจำนวนเงินสำหรับการสมัครสมาชิกหรือการซื้อแบบครั้งเดียว
สถานะ	• Payment Completed: การชำระเงินได้รับการดำเนินการแล้ว • Payment Failed: การชำระเงินไม่ได้รับการดำเนินการ • Payment Incomplete: การชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คลิก "ชำระเงินตอนนี้" เพื่อดำเนินการต่อ • กำลังรอ: การชำระเงินอยู่ระหว่างรอดำเนินการสำหรับการต่ออายุการสมัครสมาชิก

ดูรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของคุณได้โดยคลิกที่ไอคอนใบเสร็จรับเงินทางด้านขวา

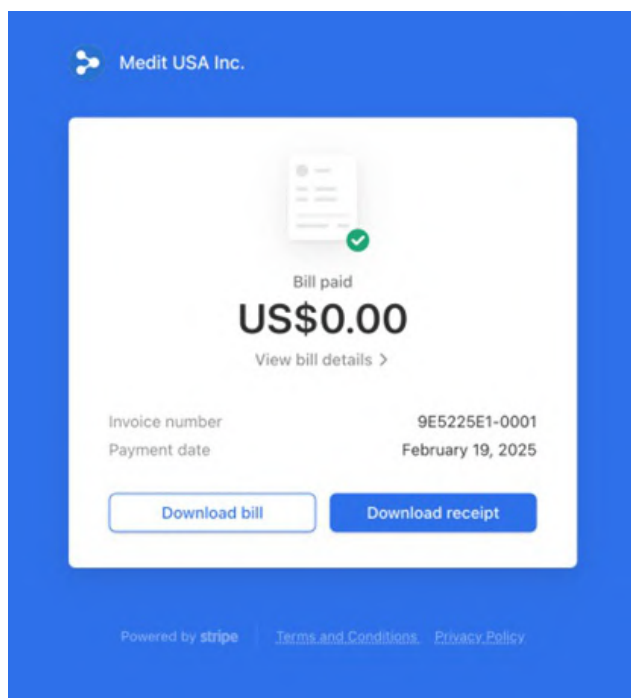

คลิก "ดูรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน" สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน

Medit USA Inc.

Bill paid

US\$0.00

View bill details

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by stripe

Terms and Conditions

Privacy Policy

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION				
Target	yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com			
source	Medit USA Inc.			
bill	#9E5225E1-0001			
ITEM				
FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025				
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics		US\$0.60		
Quantity 1 piece				
subtotal		US\$0.60		
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)				
		-US\$0.60		
Payment amount		US\$0.00		
Amount paid		US\$0.00		
Remaining amount		US\$0.00		

Do you have any questions?Contact Medit USA Inc.

59

My Info

บัญชีของฉัน

ในข้อมูลของฉัน สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะสมาชิกของคุณได้

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

**Account Information**

Email Address
seolah.jeon@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

i Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกหรือห้องแล็บของคุณได้ เซกชันนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

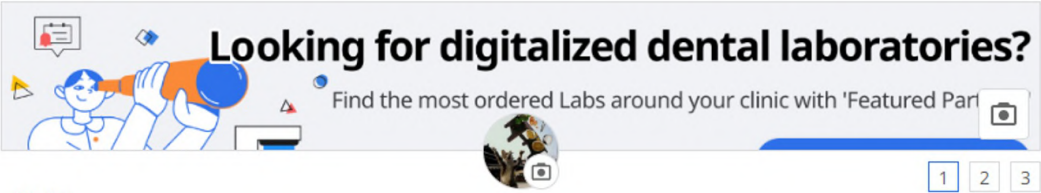

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

เครื่องสแกนของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อสำหรับบัญชีได้

<

รายการ	คำอธิบาย
ประเภท	แสดงชื่อโมเดล
หมายเลขซีเรียล	แสดงหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
เวลาการใช้งาน	ระบุว่าได้ใช้อุปกรณ์มานานเท่าใด
สถานะ	แสดงสถานะการลงทะเบียนอุปกรณ์: 'ลงทะเบียนแล้ว' แสดงว่าเครื่องสแกนได้ถูกเชื่อมต่อและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 'ไม่ได้ลงทะเบียน' หมายความว่าเครื่องสแกนไม่ได้ถูกลงทะเบียนอีกต่อไป หากเครื่องสแกนถูกลงทะเบียนกับกลุ่มอื่น มันจะสูญเสียการลงทะเบียนในกลุ่มปัจจุบันไป
เชื่อมต่อครั้งล่าสุด	แสดงวันที่การเชื่อมต่อครั้งล่าสุด
สอบเทียบครั้งล่าสุด	แสดงวันที่สอบเทียบครั้งล่าสุด
วันเริ่มต้นการรับประกัน	แสดงวันที่ที่การรับประกันถูกเปิดใช้งาน
วันหมดอายุการรับประกัน	แสดงวันที่ที่การรับประกันหมดอายุ
วันที่เหลือ	แสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนการรับประกันจะหมดอายุ
ชื่อ	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถชื่อและขยายการรับประกัน
ลบไอคอน	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบเครื่องสแกนออกจากรายการ

เมนูอื่น ๆ

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก Medit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ Medit Link เข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาและข้อมูลของ Medit เช่น Medit Academy, Medit Academy YouTube และศูนย์ช่วยเหลือ Medit

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

ดาวน์โหลดแอป Medit Link

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บ เมนูนี้มีประโยชน์เมื่อคุณสูญเสียตัวติดตั้งที่ให้มาในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ หรือคุณมีตัวติดตั้งที่ล้าสมัย

 หมายเหตุ

Medit Link จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

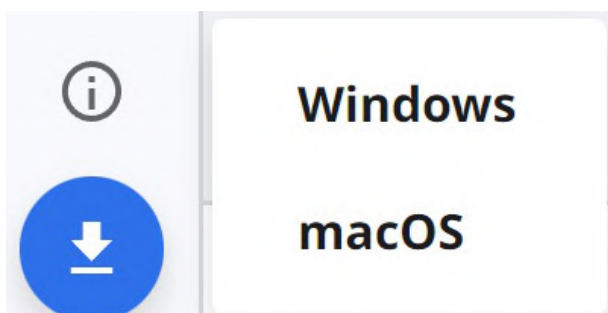

ภาพรวม

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	แถบชื่อเรื่อง	ดูที่ แอป Medit Link > แถบชื่อเรื่องสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
2	เมนู	ดูที่ แอป Medit Link > เมนูสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
3	เครื่องมือและฟังก์ชัน	ดูที่ แอป Medit Link > โปรแกรมดูไฟล์ และ แอป Medit Link > ตัวเลือกมุมมองสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
4	รายการเคส	ดูที่ แอป Medit Link > การกรองและการค้นหาเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท

ประเภทบัญชี		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
บัญชีคลินิก	ผู้ดูแลระบบ	O	O	O	X	X	O	O	O
	สมาชิก	O	O	O	X	X	O	* คุณสมบัติการคืนค่าเท่านั้น	O
บัญชีห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	X	X	X	O	O	O	O	O
	สมาชิก	X	X	X	O	O	O	* คุณสมบัติการคืนค่าเท่านั้น	O

แถบชื่อเรื่อง

แถบชื่อเรื่องช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลบัญชี การแจ้งเตือน ประกาศและการอัปเดต การตั้งค่า และสถานะเครือข่าย



ข้อมูลของฉัน

ข้อมูลของฉันประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้พื้นฐาน เช่น รูปโปรไฟล์ ชื่อคลินิกหรือห้องแล็บ ที่อยู่อีเมล และชื่อผู้ใช้

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

การแจ้งเตือน

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร คำสั่งทำ และกระบวนการทำงานได้

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

1	ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อแสดงเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
2	คลิกที่การแจ้งเตือนใด ๆ เพื่อไปยังเคสหรือหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องในทันที

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก Medit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

การตั้งค่า

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าโปรแกรมได้

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
 ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

โปรดดูที่ [แอป Medit Link > การตั้งค่า](#) สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่า

สถานะเครือข่าย

Medit Link ช่วยให้ผู้ใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เพื่อช่วยคุณตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณแบบเรียลไทม์ ไอคอนสถานะเครือข่ายจะถูกแสดงในแถบชื่อเรื่อง

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี คุณอาจพบข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัด เช่น การเรียงลำดับเคส การสร้างเคส การแชร์ผ่าน Case Talk และการชิงโครโนซ์กับคลาวด์
- ประสิทธิภาพโดยรวมของบริการสามารถลดลงได้เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมเครือข่าย

ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่โหมดออฟไลน์เพื่อทำงานพื้นฐาน จากนั้นใช้คุณสมบัติที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อคุณเชื่อมต่อได้แล้ว

หมายเหตุ

สัญลักษณ์เครือข่ายระบุความเร็วการตอบสนองระหว่างพื้นที่ปัจจุบันและ AWS (Amazon Web Service) มันไม่ได้หมายถึงความเร็วเครือข่ายของคุณ ดังนั้นบางครั้งมันอาจแสดงสถานะว่าแย่มากหรือไม่ดี ถึงแม้ว่าความเร็วเครือข่ายของคุณจะเร็วพอก็ตาม

หากกระบวนการอื่นใช้เครือข่ายเดียวกัน ความเร็วอาจแสดงว่าแย่มากหรือไม่ดี และประสิทธิภาพโดยรวมของ Medit Link อาจไม่ดี ในกรณีนี้ โปรดอย่าแชร์เครือข่ายกับกระบวนการอื่น

ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ "อัปโหลดข้อมูลดิบ" เป็นส่วนที่ใหญ่โตของกระบวนการเครือข่าย หากสัญลักษณ์แสดงสถานะว่าแย่มากหรือไม่ดี ให้ไปที่การตั้งค่า > อัปโหลดข้อมูลดิบ และปิด "อัปโหลดอัตโนมัติ"

การตั้งค่า

ทั่วไป

มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าระบบโดยรวม

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Apply

Close

โฟลเดอร์ที่บันทึก	ระบุโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์ข้อมูลที่ถูกสร้างใน Medit Link และโปรแกรมที่เชื่อมต่อ	
โฟลเดอร์การติดตั้งแอป	โปรดระบุเส้นทางการติดตั้งสำหรับ Medit Apps และ partner apps ที่มีอยู่ใน App Box	
การตั้งค่าภาษา	เลือกภาษาสำหรับโปรแกรม	
การตัดป้ายกำกับฟัน	เลือกระบบการตัดป้ายกำกับฟันระหว่าง FDI และ US	
การแจ้งเตือน	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตโปรแกรม	
อัปโหลดข้อมูลดิบ	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ข้อมูลดิบจะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ มันช่วยสำรองข้อมูลต้นฉบับและทำการสแกนได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้ Medit Link ด้วยบัญชีเดียวกันบนพีซีเครื่องอื่น การสำรองข้อมูลต้นฉบับบนคลาวด์จะใช้กับข้อมูลที่ได้มาใน Medit Scan for Clinics เท่านั้น	
การสแกนด่วน	เลือกว่าคุณต้องการให้ขั้นตอนการสแกนด้านล่างปรากฏใน Medit Scan for Clinics โดยอัตโนมัติหรือไม่ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม - ก่อนการรักษาสำหรับชากรรไกรบน - ก่อนการรักษาสำหรับชากรรไกรล่าง - การสแกนใบหน้า	
ตัวเลือกการดู	การเรนเดอร์ขั้นสูง	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ โมเดล 3D จะถูกแสดงในรูปแบบการเรนเดอร์ที่สดใสและสมจริงยิ่งขึ้น
	ปรับพื้นผิวสี	ปรับความสว่างของโมเดล 3D * สีที่ได้อาจแตกต่างจาก Medit Link เล็กน้อยเมื่อคุณเปิดข้อมูลเดียวกันด้วยซอฟต์แวร์อื่น
โปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ Medit	เข้าร่วมในโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ Medit. - เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา - เราไม่รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคล	
หน้าเริ่มต้นหลังจากเข้าสู่ระบบ	เลือกเมนูเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเริ่มโปรแกรม - บัญชีคลินิกสามารถเลือกได้ระหว่าง Patient และ Case Box - บัญชีห้องแล็บสามารถเลือกระหว่าง In Box และ Work Box	

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

ตรวจสอบและจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องและบนคลาวด์

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Storage Management

Set Period

1/1/2018-11/13/2023

✓ All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Months Ago

1 Year Ago

Local PC Storage

696.19 GB/7952.96 GB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

26.89 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

2.54 GB

Others

It shows space used by other programs.

666.76 GB

Cloud Storage

36.53 GB/10.00 TB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

837.95 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

36.53 GB

Total Selected 0.00 KB

Delete

Total Selected 0.00 KB

Delete

Close

71

กำหนดระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาด้านล่าง

- ทั้งหมด: ดูไฟล์ทั้งหมด
- 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสร้าง
- 1 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งเดือนหลังจากการสร้าง
- 6 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหกเดือนหลังจากการสร้าง
- 1 ปีที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งปีหลังจากการสร้าง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง

จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของพีซี

ข้อมูลดิบ	ลบข้อมูลดิบที่เลือกไว้จากพีซี หากข้อมูลดิบถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานมันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ลบผลลัพธ์และไฟล์แนบออกจากพีซี เช่น mesh รูปภาพ และวิดีโอ หากไฟล์เหล่านี้ถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานพวกมันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
อื่น ๆ	ดูไฟล์ที่ใช้ในการดำเนินงานระบบและโปรแกรมอื่น ๆ มันแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลของพีซีของคุณ คุณไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ออกจาก Medit Link ได้
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้จากพีซี

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อมูลดิบ	ข้อมูลดิบไม่ใช่พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นมันจะไม่อยู่ในแผนภูมิวงกลม แต่คุณสามารถจัดการข้อมูลดิบได้จากที่นี่หากจำเป็น เช่น ลบมันออกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นต้น
ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบใช้พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หากคลาวด์เต็ม คุณสามารถรักษาความปลอดภัยพื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูล	หากคุณใช้ 2 GB Plan อยู่ ให้สมัครสมาชิก 10 TB Plan เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้จากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

ตั้งค่าโปรแกรมที่เชื่อมต่อ

จัดการโปรแกรมที่รองรับการผสานรวมใน Medit Link

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒

Medit Scan for Clinics

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

คุณสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่อไปนี้ได้:

	บัญชีคลินิก	บัญชีห้องแล็บ
โปรแกรมการสแกน	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

หมายเหตุ

การผสมรวมบริการต่อไปนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Medit Link สำหรับ Mac

- Medit Scan for Labs

ตัวเลือกการส่งออก

ตั้งค่าวิธีการส่งออกไฟล์จาก Medit Link

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

Dr:/HGam_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☐ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
 ☒ JPEG
 ☐ PNG
 ☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
 ☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
 ☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
 ☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

ประเภท	เลือกโปรแกรม CAD ที่คุณต้องการใช้สำหรับการออกแบบ โปรแกรมจะปรับผลลัพธ์ตามการเลือกของคุณ ช่วยให้สามารถทำการออกแบบต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการจัดแนวแกนเพิ่มเติม
ส่งออกไฟล์ไปที่	ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บผลลัพธ์
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh ขั้นสุดท้าย
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดและรวมกัน	บีบอัดไฟล์: บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว ผสมรวม mesh แต่ละรายการ: รวมผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างไว้ในไฟล์เดียว เมื่อใช้บางโปรแกรมที่ไม่สามารถนำเข้าและทำงานกับหลายไฟล์ได้ คุณสามารถรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียวเพื่อทำงานในโปรแกรมเหล่านั้นได้
ตัวเลือกเมื่อมีไฟล์เดียวหรือไฟล์เดียวกันอยู่แล้ว	เลือกการดำเนินการเริ่มต้นสำหรับเคสที่มีไฟล์เดียวหรือชื่อไฟล์เดียวกันอยู่ในเส้นทางเป้าหมาย • ถ้ามทุกครั้งเมื่อส่งออก • ส่งออกไฟล์ใหม่และเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันจะหายไป • สร้างไฟล์เดอร์และส่งออกไฟล์
กฎสำหรับชื่อไฟล์เดอร์	กำหนดกฎสำหรับการสร้างชื่อไฟล์เดอร์เมื่อส่งออกไฟล์ กฎที่ตั้งไว้จะมีผลกับการตั้งชื่อไฟล์เดอร์ และไฟล์ที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในไฟล์เดอร์ที่สร้างไว้ สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ • บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ • บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ
กฎสำหรับชื่อไฟล์	กำหนดกฎสำหรับชื่อไฟล์ที่ถูกส่งออก สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ • บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ • บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ

เครื่องมือแปลงเคส

คุณสามารถย้ายเคสระหว่างบัญชีต่าง ๆ ได้โดยการส่งออกเคสที่มีอยู่ของบัญชี หรือนำเข้าเคสที่ถูกส่งออกจากบัญชีอื่น

3. ในเซกชันการส่งออก ให้กำหนดระยะเวลาหรือค้นหาเคสสำหรับส่งออกหากจำเป็น

4. เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออกจากรายการในเซกชัน "ไฟล์ที่จะส่งออก"

5. ตั้งชื่อไฟล์โดยแก้ไขชื่อเคสในฟิลด์ชื่อไฟล์
6. ตั้งโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อส่งออกเคสที่เลือกไว้
7. คลิก "ส่งออก"
8. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่จะส่งออกไฟล์ไปยัง

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. เคสที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .meditex

นำเข้าเคส


1. เปิด Medit Link แล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า

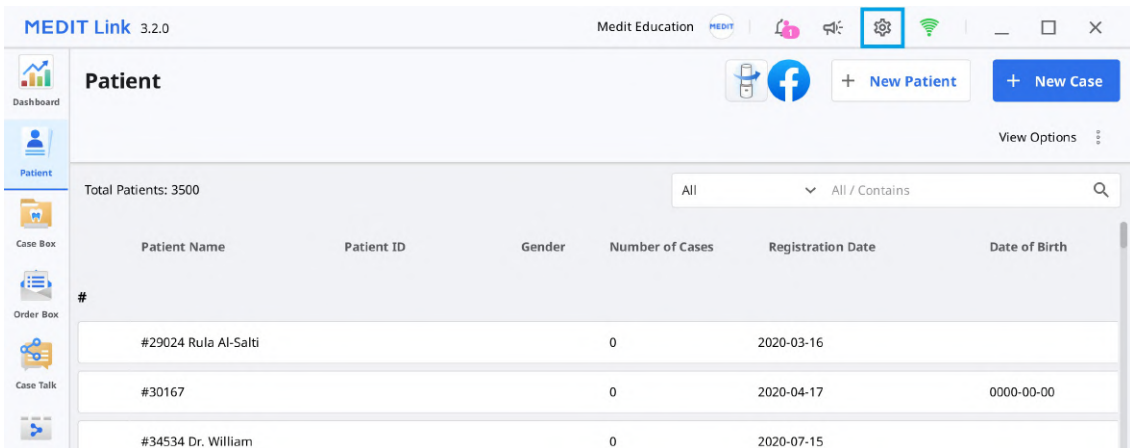

2. เลือกเชคชั้น "เครื่องมือแปลงเคส" ในเมนูด้านซ้าย

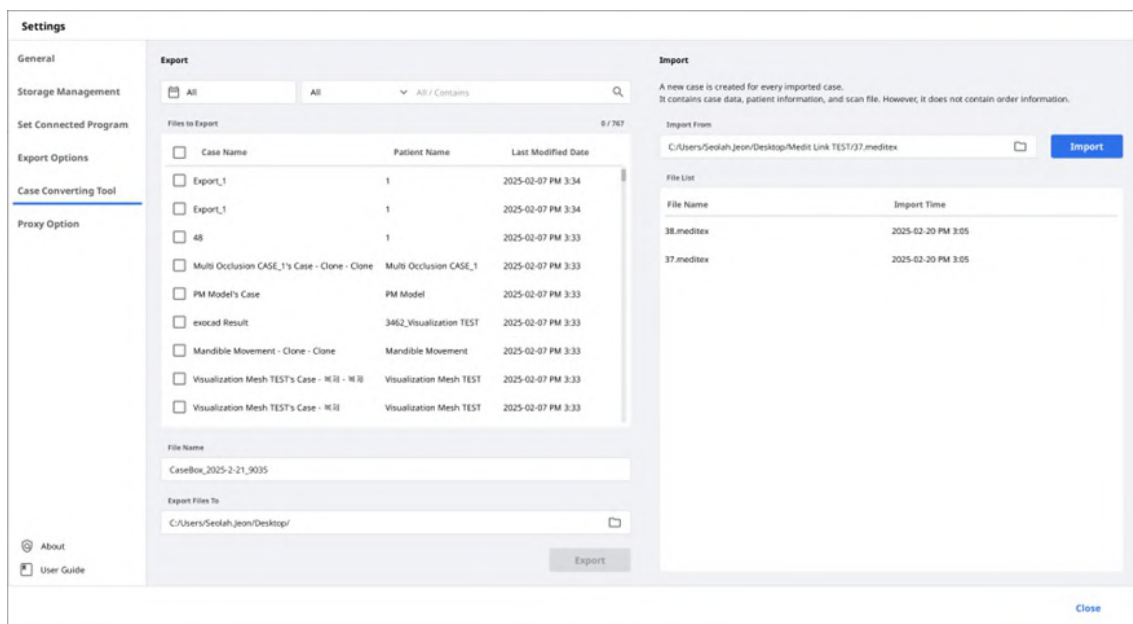

3. ในเชคชั้นนำเข้า ให้คลิกไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเรียกดูไฟล์ .meditex ที่คุณต้องการนำเข้าในพีซีของคุณ

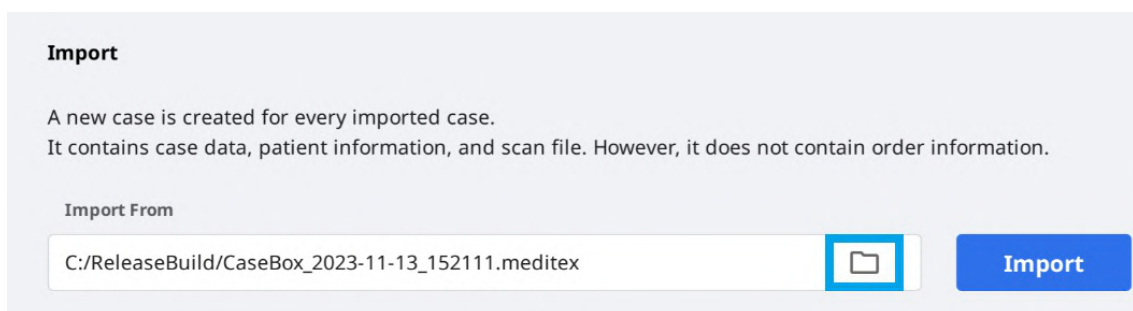

4. คลิกปุ่ม "นำเข้า" และทำเครื่องหมายไฟล์ที่จะนำเข้าในรายการด้านล่าง

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. เคสที่ถูกนำเข้าจะปรากฏใน Case Box (บัญชีคลินิก) ของคุณหรือ Work Box (บัญชีแล็บ) ของคุณ

ตัวเลือกพร็อกซี

ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่จำกัด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายได้

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

เกี่ยวกับ

แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Medit Link

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」 임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

คู่มือผู้ใช้


รับคู่มือผู้ใช้สำหรับ Medit Link

การเปิดคู่มือผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมนู

Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

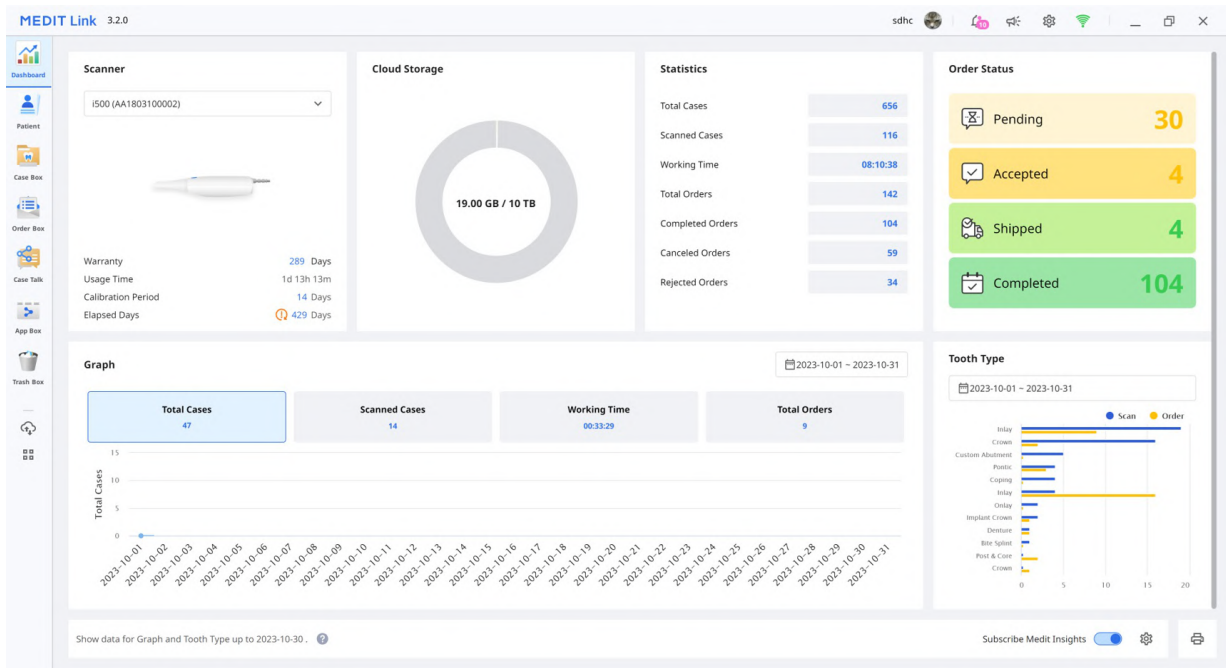

หมายเหตุ

โปรดดูที่ [Medit Link Web > Dashboard](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dashboard และ Medit Insights

Patient

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือผสานรวมผู้ป่วยได้ในเมนูผู้ป่วย

MEDIT Link3.4.0

seclah.jeon_dev_admin

เพิ่มผู้ป่วยใหม่

1. คลิก "ผู้ป่วยใหม่"

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address*

Memo

Cancel Save


2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบผู้ป่วยใหม่ จากนั้นคลิก "บันทึก"

ลบผู้ป่วย

หมายเหตุ

คุณสามารถลบผู้ป่วยได้เฉพาะเมื่อไม่มีเคสสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น

1. เลือกผู้ป่วยที่จะลบออกจากรายการ

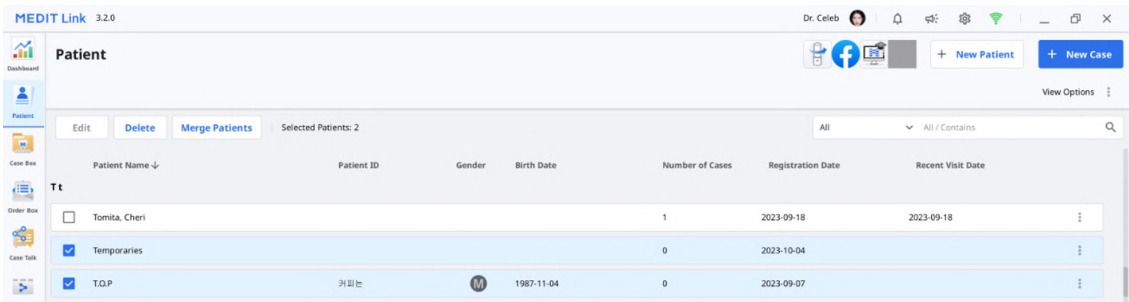


2. คลิก "ลบ"

ผสานรวมผู้ป่วย

คุณสามารถผสานรวมเคสทั้งหมดของผู้ป่วยหลายรายให้เป็นผู้ป่วยรายเดียวได้

1. เลือกผู้ป่วยที่คุณต้องการผสานรวมจากรายการ

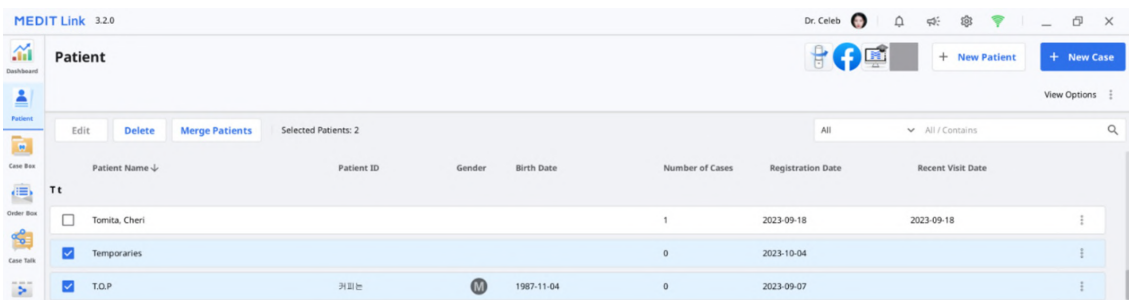

2. คลิก "ผสานรวมผู้ป่วย"
3. เลือกผู้ป่วยเป้าหมายที่คุณต้องการผสานรวมเคสทั้งหมดเข้าไป
4. เคสทั้งหมดจะถูกผสานรวมเข้ากับผู้ป่วยเป้าหมายและข้อมูลผู้ป่วยของผู้ป่วยเป้าหมายจะคงอยู่

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel **Apply**

5. คลิก "ใช่" เพื่อดำเนินการผสานรวมต่อไป

Case Box/Work Box

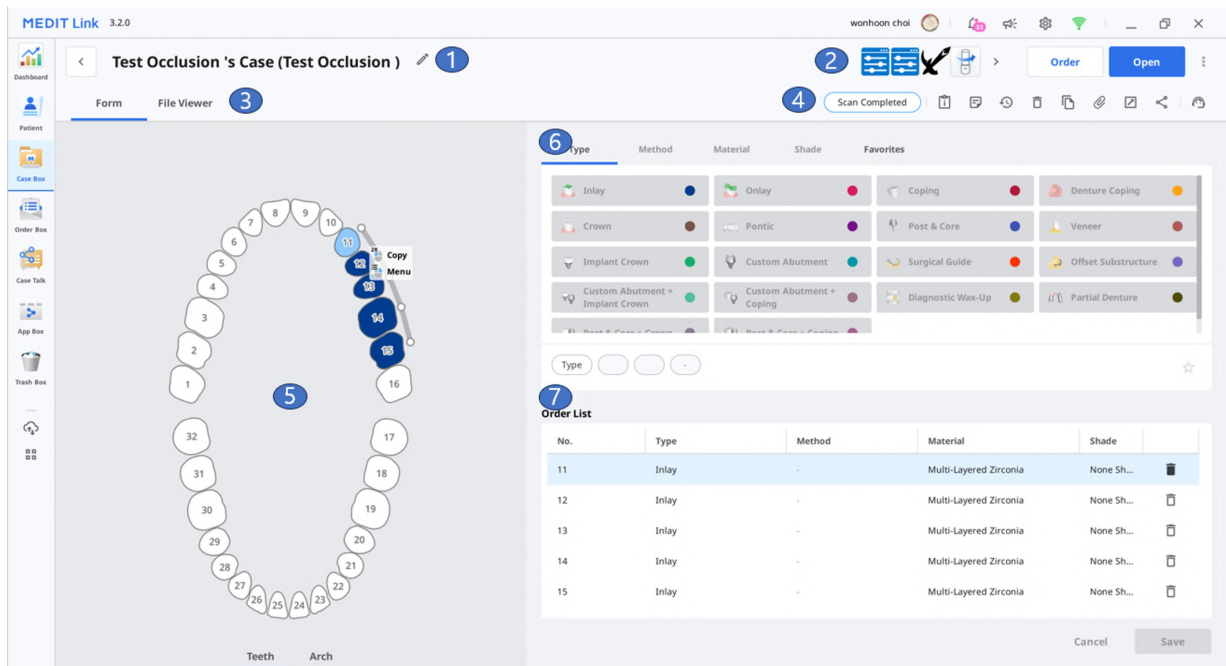

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	นำเสนอคุณสมบัติหลักที่มีอยู่: ปุ่มสแกนหรือเปิด, ปุ่มคำสั่งทำ, ไอคอนแอป
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: แบบฟอร์ม, โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์
5	แสดง UI ของการลงทะเบียนแบบฟอร์มสำหรับโปรแกรมการสแกนที่เลือก
6	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีให้ผู้ใช้เลือกสำหรับหมายเลขพื้นที่เลือกไว้
7	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีที่ถูกใช้กับพื้นที่เลือกไว้

แท็บใน Case Box/Work Box

แบบฟอร์ม	โปรแกรมดูไฟล์
แท็บแบบฟอร์มจะมี UI สำหรับการป้อนข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานสแกน เช่น ประเภท วิธีการ วัสดุสำหรับหมายเลขพื้นที่ และตัวเลือกการสแกน ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกส่งไปยังโปรแกรมการสแกนที่เชื่อมต่อและถูกใช้เป็นข้อมูลคำสั่งทำเมื่อสั่งทำกับพันธมิตรของคุณ	ดูไฟล์ผลลัพธ์ที่สร้างโดยโปรแกรมสแกนและ CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3 มิติและรูปภาพ 2 มิติที่ได้มาหรือถูกแนบมา

ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box

มีฟังก์ชันต่อไปนี้ใน Case Box/Work Box

	สถานะเคส	แสดงสถานะเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ
	ประวัติเคส	ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติเคส History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	ลบ	ลบเคส คุณไม่สามารถลบเคสที่ถูกสั่งทำหรือเคสที่ถูกสร้างขึ้นแบบออฟไลน์ได้
	โคลน	สร้างสำเนาของเคสปัจจุบันใน Case Box ข้อมูลทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปยังเคสที่ถูกโคลน คุณสมบัตินี้ช่วยจำลองข้อมูลการรักษาสำหรับผู้ขายรายเดียวกัน หรือดำเนินการคำสั่งทำเสริมด้วยข้อมูลหรือไฟล์เดียวกัน
	แนบ	แนบไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ
	ส่งออก	ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์การสแกนหรือ CAD ไปยังในพื้นที่พีซี คุณสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการได้เมื่อส่งออกไฟล์ ไฟล์ที่ถูกส่งออกสามารถใช้ในซอฟต์แวร์ CAD และ CAM เพื่อการทำงานต่อไปได้
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสามารถแชร์ลิงก์กับใครก็ตามหรือกับบุคคลที่ระบุไว้ได้อย่างมีอิสระ สามารถตั้งค่ารหัส PIN หรือวันหมดอายุของลิงก์เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวได้
	ส่งคำขอการสนับสนุน	ไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ Medit เพื่อส่งคำขอการสนับสนุน

Order Box/In Box

MEDIT Link 3.2.0 | wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Test)

Order | **File Viewer**

Order ID: 5996137

Patient Name: Occlusion Test | **Partner Name:** WonhoonChoi_Lab_Stage

Scan Date: 2023-04-20 08:15 | **Order Date:** 2023-04-20 08:15

Requested Delivery Date: 2023-04-27 | **Expected Delivery Date:** 2023-04-27

Memo:

Tags:

Order List | **Shipment**

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	ให้ฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งทำ (การยอมรับ/การยกเลิก; การส่งมอบ/การรับ)
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: คำสั่งทำ โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์: สถานะของเคส, ทางลัดสำหรับข้อมูลโดยละเอียด, ข้อมูลเคส, บันทึกและแท็ก เป็นต้น
5	แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ รวมถึงหมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อพันธมิตร วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ และบันทึกและแท็ก
6	แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำและสถานะการส่งมอบ

แท็บใน Order Box/In Box

คำสั่งทำ	โปรแกรมดูไฟล์
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทำ เช่น หมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อบัญชี วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ บันทึกและแท็ก	ดูไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการสแกน/CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลที่ระบุไว้ ใครก็ตามที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน Case Talk ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

หมายเหตุ

บริการ Case Talk ต้องการการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

MEDIT Link 3.3.0

admin

Case Talk

2018-01-01 - 2024-04-23

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

1

สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

App Box

App Box มีโปรแกรมเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยเสริมขั้นตอนการสแกนขั้นพื้นฐานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปที่นำมาเพื่อสร้างอุปกรณ์ทันตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลการสแกน ช่วยเหลือคุณระหว่างการปรึกษา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

MEDIT Link 3.3.0

Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook! Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Join Now

Explore Medit Resources News, tips, and expert insights on Digital Dentistry

Visit Now

All Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

Medit DCM Converter Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format

Update

Medit Smile Design Simulation of teeth movement for orthodontic cases

Installed

Medit Ortho Simulation Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...

Install

Action Gate (ヨシダ - Yoshida) Comprehensive dental PMS

Install

Management

DentWeb(덴트웹) Integration Comprehensive dental PMS

Install

EasyRx Integration Universal orthodontic LMS

Install

Open Dental Integration Quality software for dental offices

Install

iie systems connector PRIM specialized for orthodontics

Install

OneClick Integration App Osstem's easy-to-use PMS

Install

i-Pro Integration Comprehensive dental PMS

LOGOSw Integration Add a link between LOGOSw and Medit Link

DentalCAD Integration Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.

Action Gate (ヨシダ - Yoshida) Comprehensive dental PMS

Andcom Integration Convenient dental PMS

All


แท็บ "ทั้งหมด" จะแสดงรายการแอปที่มีให้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบรรดาแอปดั้งเดิมที่ Medit พัฒนาขึ้น (Medit Apps) และ partner apps ซึ่งเป็นแอปที่บูรณาการร่วมกับพันธมิตรของ Medit จากภาคส่วนต่าง ๆ ของทันตกรรมดิจิทัล เช่น การพิมพ์ 3D, ซอฟต์แวร์ CAD/CAM เป็นต้น

Medit Apps

แท็บ "Medit Apps" จะแสดงเฉพาะรายการแอปที่ตั้งเดิมที่ Medit พัฒนาขึ้น

ถูกดาวน์โหลด

แท็บ "ดาวน์โหลดแล้ว" จะแสดงรายการแอปที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณและแอปที่มีประวัติการดาวน์โหลดโดยบัญชีผู้ใช้

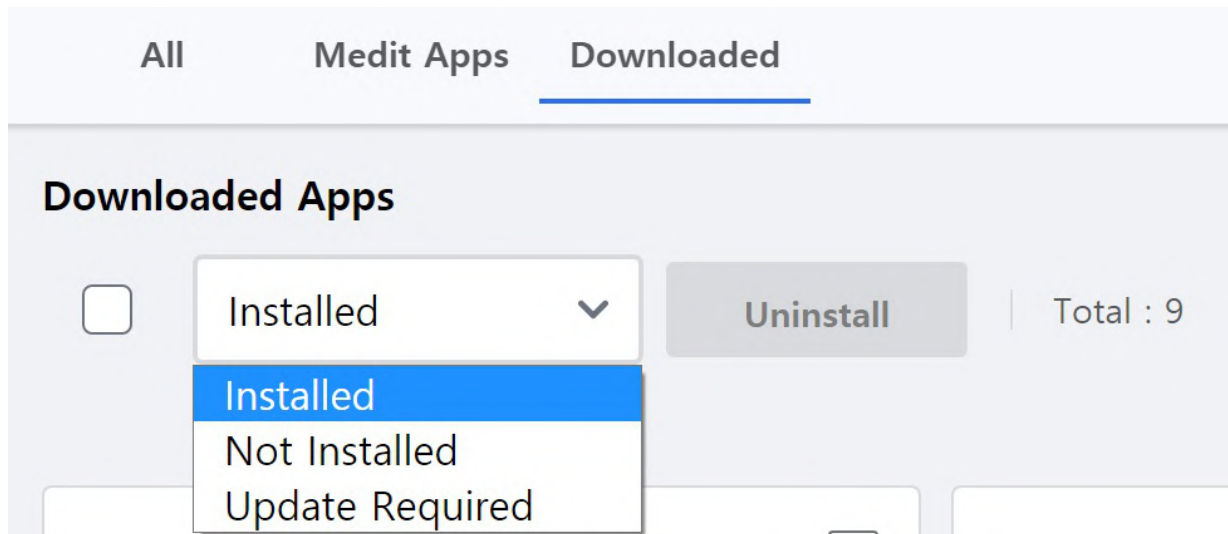

- **ติดตั้งแล้ว:** option นี้จะแสดงเฉพาะแอปที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในปัจจุบัน
- **ไม่ได้ติดตั้ง:** option นี้จะช่วยให้คุณเห็นแอปที่คุณติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องอื่น เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งมันได้อย่างรวดเร็ว
- **จำเป็นต้องอัปเดต:** option นี้จะแสดงเฉพาะแอปที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องปัจจุบันและจำเป็นต้องอัปเดต

Trash Box

Trash Box จะจัดเก็บเคสที่ถูกลบไว้ชั่วคราว ทุกเคสใน Trash Box สามารถถูกกู้คืนหรือถูกลบออกอย่างถาวรได้

ข้อควรระวัง

ข้อมูลที่ถูกลบออกจาก Trash Box จะถูกลบออกจากพีซีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณอย่างถาวร และไม่สามารถถูกกู้คืนได้

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

โปรแกรมจัดการการซิงโครไนซ์เคส

โปรแกรมจัดการการซิงโครไนซ์เคสจะช่วยให้คุณอัปโหลดและดาวน์โหลดเคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถอัปโหลดเคสหลายเคสไปยังคลาวด์หรือดาวน์โหลดไปยังในพื้นที่พีซีของคุณได้ หากต้องการระบุเคสที่ต้องการการซิงโครไนซ์ เพียงแค่ค้นหาหรือใช้ตัวกรองวันที่

Case Synchronization Manager

Upload Download						
All		Case Name Case Name / Contains				
Total Cases: 210		☒ No Date Data Type All				
☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status		
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required		
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required		
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required		
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required		
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required		
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required		
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required		
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required		
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required		
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required		
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required		

Close

อัปโหลด

 Upload	อัปโหลดเคสที่เลือกไว้
 Cancel	ยกเลิกการอัปโหลดสำหรับเคสที่เลือกไว้
 Retry	ลองอัปโหลดเคสใหม่อีกครั้งถ้าการอัปโหลดล้มเหลว

ดาวน์โหลด

 Download	ดาวน์โหลดเคสที่เลือกไว้
 Cancel	ยกเลิกการดาวน์โหลดสำหรับเคสที่เลือกไว้
 Retry	ลองดาวน์โหลดเคสใหม่อีกครั้งหากการดาวน์โหลดล้มเหลว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถไปที่เมนูที่มีเฉพาะบนเว็บ Medit Link ได้โดยตรง เช่น My Info, Partners, และ Membership โปรดดูที่ Medit Link > เว็บ Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) และ [My Info](#) สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของเมนูเว็บ Medit Link

คุณสามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Medit นั่นก็คือ Medit Shop ที่ซึ่งคุณสามารถซื้อการขยายการรับประกันสำหรับเครื่องสแกนและผลิตภัณฑ์ Medit อื่น ๆ เช่น เป้สะพายหลังสำหรับเครื่องสแกน

นอกจากนี้คุณยังสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ Medit Link ได้ เข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาและข้อมูลของ Medit เช่น ศูนย์ช่วยเหลือ Medit, ช่อง YouTube ของ Medit Academy และแพลตฟอร์มการศึกษาด้านออนไลน์ของ Medit Academy



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

โปรแกรมดูไฟล์

โปรแกรมดูไฟล์จะจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับ Medit Link และข้อมูลที่ผู้ใช้แนบมา



มันมีฟังก์ชันการจัดการขั้นพื้นฐาน เช่น การแสดง/ซ่อนข้อมูล การปรับความทึบ และการลบข้อมูล

มันรองรับการแสดงตัวอย่างไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้:

- ข้อมูล 3D: STL, OBJ, PLY
- ภาพ 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- ไฟล์วิดีโอ: MKV, MP4, AVI, WMV

แผนผังข้อมูล

คุณสามารถจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับเคสในแผนผังข้อมูลได้ คุณยังสามารถแสดง/ซ่อนข้อมูล ปรับความโปร่งใส และลบข้อมูลจากแผนผังข้อมูลได้

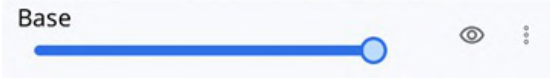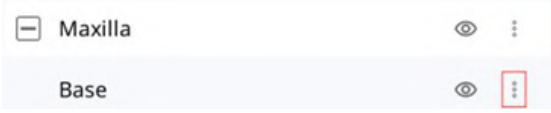
	แสดง/ ซ่อน	คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูลได้
	ความ ทึบ	แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในบนแผนผังข้อมูล คุณสามารถปรับความทึบของข้อมูลที่แสดงได้โดยเลื่อนแถบเลื่อน 
	เพิ่ม เติม	การคลิกที่ไอคอน เพิ่มเติม จะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน  • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด แต่แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น • ซ่อน: ซ่อนข้อมูล • ทำซ้ำ: คัดลอกข้อมูลและเพิ่มมันลงในกลุ่มไฟล์แนบ • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่เลือก • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของข้อมูล • ลบ: ลบข้อมูล



หมายเหตุ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้เมื่อออนไลน์

เครื่องมือควบคุมโมเดล

การควบคุมโมเดล 3D

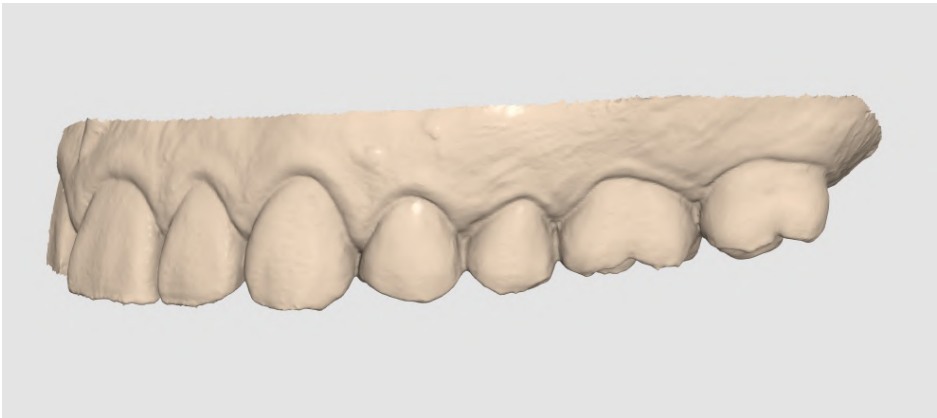+	แพน	ย้ายโมเดล
○	หมุน	หมุนโมเดล
🔍	ซูมเข้า/ออก	ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
📏	ซูมปรับพอดี	จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
โทมดการแสดงข้อมูล	ม้วน	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟิสิกส์ม้วน (การเรนเดอร์ PBR) 
	แมตต์	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟิสิกส์แมตต์ (การเรนเดอร์ Phong) 
	โมโนโครม	ดูข้อมูลในสีเดียว 

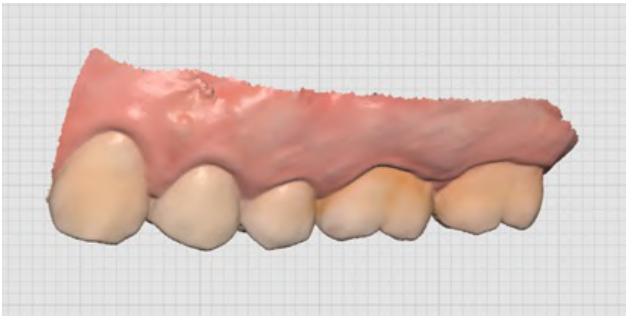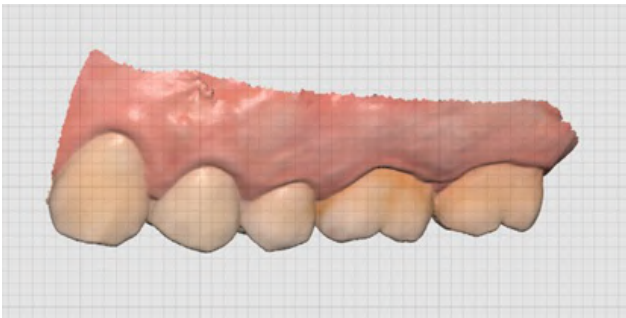	การตั้งค่าเส้นกริด กริด (mm) 	เปิดเส้นกริด	แสดงเส้นกริดในพื้นที่หลัง 
		ปิดเส้นกริด	ซ่อนเส้นกริดในพื้นที่หลัง
		เปิดการซ่อนทับ	ซ่อนทับเส้นกริดเหนือโมเดล 

การควบคุมภาพ 2D


 	ภาพถัดไป/ก่อนหน้า	ย้ายไปมาระหว่างภาพ
	แก้ไข	แก้ไขภาพ
 	หุบ/วางหน้าต่าง	คุณสามารถแยกหน้าต่างภาพออกไปและปรับมันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้ เมื่อหน้าต่างถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งเดิม หน้าต่างจะกลับสู่ขนาดเริ่มต้น

เครื่องมือฟังก์ชัน

การจับภาพและบันทึก


จับภาพหน้าจอปัจจุบันเป็นภาพ 2D วาดบนหน้าจอ หรือเพิ่มบันทึก


คุณสามารถบันทึกมันเป็นไฟล์พร้อมกับบันทึกของคุณและส่งมันเป็นข้อมูลอ้างอิงได้

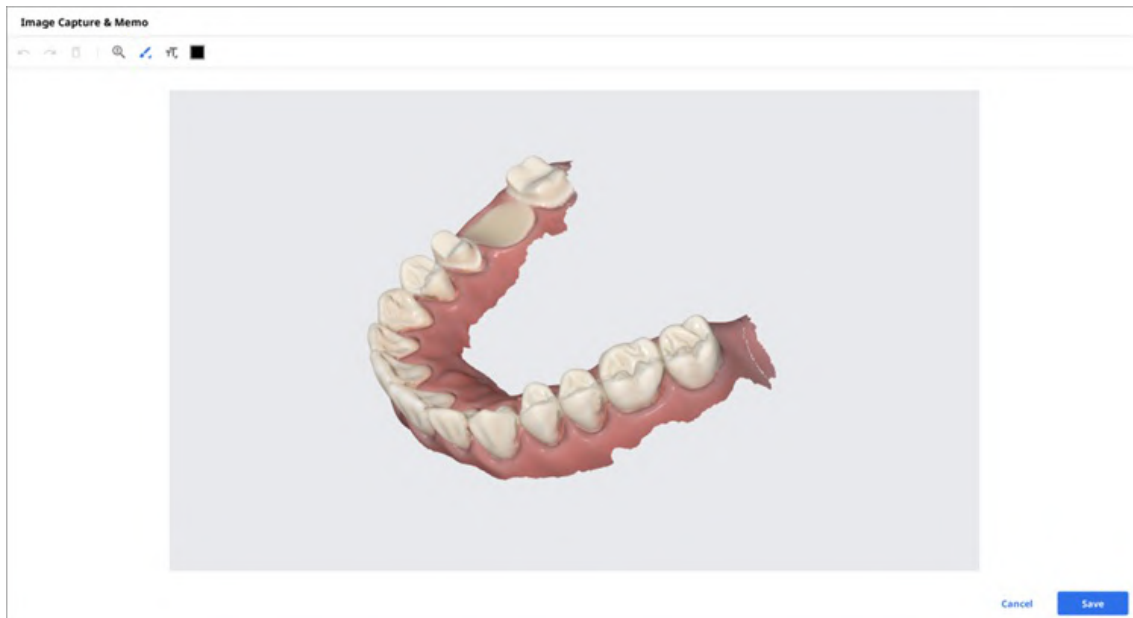

การจับภาพออร์โธ

จับภาพในทิศทางการดูปัจจุบันและด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาจากทิศทางการดูปัจจุบัน

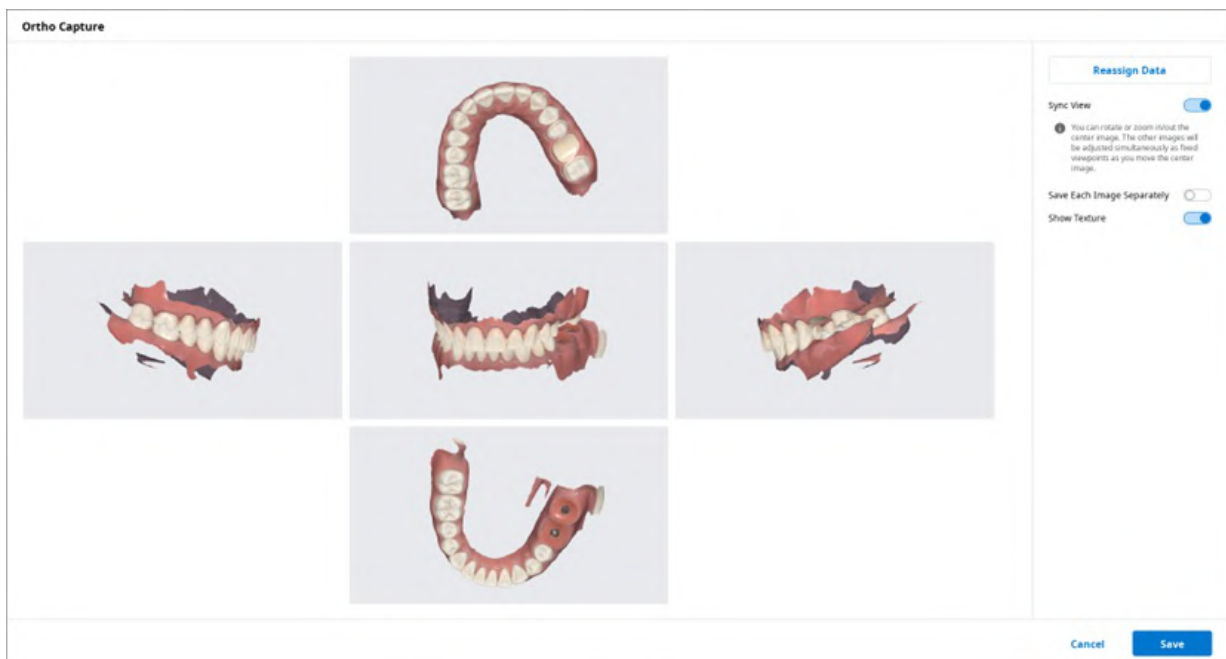

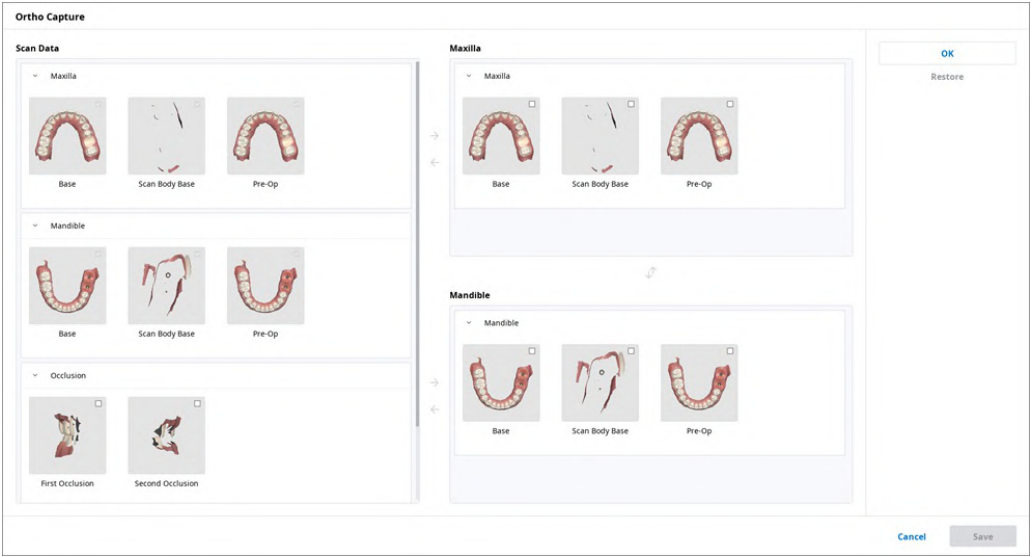มุมมองซิงค์	เมื่อเปิด คุณสามารถหมุนหรือซูมภาพตรงกลางเข้า/ออกได้ ภาพอื่น ๆ จะถูกปรับพร้อมกันเป็นมุมมองคงที่เมื่อคุณเลื่อนภาพตรงกลาง เมื่อปิด คุณสามารถแพน หมุน หรือซูมเข้า/ออกภาพทั้งหมดที่ละภาพได้
บันทึกแต่ละภาพแยกกัน	บันทึกแต่ละภาพในความละเอียดสูง
แสดงพื้นผิว	เปิด/ปิดพื้นผิวสำหรับโมเดล
กำหนดข้อมูลใหม่	เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับขากรรไกรบน/ขากรรไกรล่างด้วยคุณสมบัติกำหนดข้อมูลใหม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนเพื่อสร้างและใช้ภาพผลลัพธ์ของการจับภาพภาพออร์โธได้  • ข้อมูลการสแกน: ข้อมูลการสแกนสำหรับเคสจะถูกแสดงทั้งหมด • ขากรรไกรบน: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรบนจะปรากฏขึ้น • ขากรรไกรล่าง: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรล่างจะปรากฏขึ้น


เติมเต็มช่องว่าง

เติมเต็มช่องว่างในข้อมูล 3D mesh



การตัดแต่ง


การตัดแต่งมีเครื่องมือมากมายสำหรับแก้ไขข้อมูล

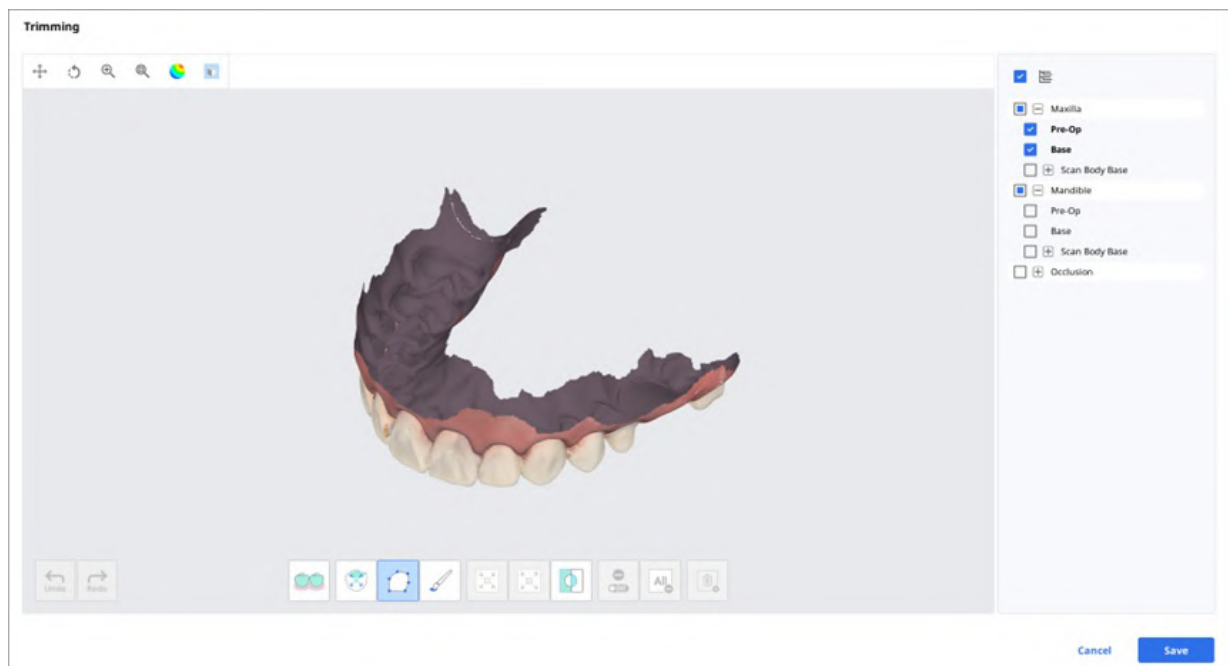

สามารถแก้ไขข้อมูล 3D mesh ที่เลือกไว้ได้โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง

การเลือก		การเลือกพื้น อัจฉริยะ	เลือกพื้นทั้งหมดของส่วนโค้งแนวพื้นโดยอัตโนมัติ โดยทั้งส่วนของเหงือกไว้ หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลการสแกนที่ได้รับโดยใช้ Medit Scan for Clinics ด้วยการเปิดตัวเลือก "ใช้ GPU"
		การเลือกพื้นซี่ เดียวอัจฉริยะ	เลือกพื้นที่ของพื้นซี่เดียวโดยอัตโนมัติด้วยคลิกเดียว คุณสามารถคลิกหรือลากบนพื้นได้
		การเลือกโพลี ไลน์	เลือกเอนทิตีทั้งหมดภายในรูปร่างโพลีไลน์ที่วาดไว้บนหน้าจอ
		การเลือกด้วย แปรง	เลือกเอนทิตีทั้งหมดบนเส้นที่วาดด้วยมือเปล่าบนหน้าจอ จะเลือกเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น มีแปรงสามขนาดแตกต่างกัน
การปรับพื้นที่ ที่เลือกไว้		ย่อพื้นที่ที่เลือกไว้	ลดพื้นที่ที่เลือกในทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
		ขยายพื้นที่ที่เลือก ไว้	ขยายพื้นที่ที่เลือกในทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
		กลับด้านพื้นที่ที่ เลือกไว้	กลับด้านการเลือก
การยกเลิก การเลือก		การเลือก/การ ยกเลิกการเลือก	เมื่อเปิด จะยกเลิกการเลือกพื้นที่โดยเครื่องมือต่าง ๆ
		ล้างการเลือก ทั้งหมด	ล้างพื้นที่ที่เลือกไว้ทั้งหมด
		ลบพื้นที่ที่เลือกไว้	ลบข้อมูลจากพื้นที่ที่เลือกไว้

1. เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการตัดแต่งด้วยเครื่องมือเลือกพื้นที่

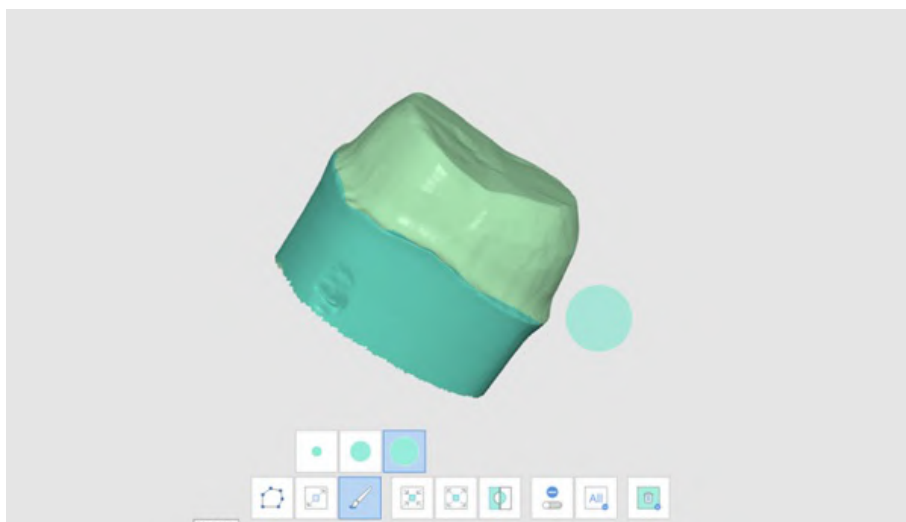


หมายเหตุ


เครื่องมือตัดแต่งแบบโพลีไลน์จะเลือกเอนทิตีทั้งหมดภายในรูปร่างโพลีไลน์ที่วาดไว้บนหน้าจอ ในขณะที่เครื่องมือตัดแต่งแบบแปรงจะเลือกเฉพาะข้อมูลด้านหน้าเท่านั้น

2. คุณสามารถกลับด้าน ย่อ หรือขยายส่วนที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือสามประเภทต่อไปนี้


- กลับด้านพื้นที่ที่เลือกไว้

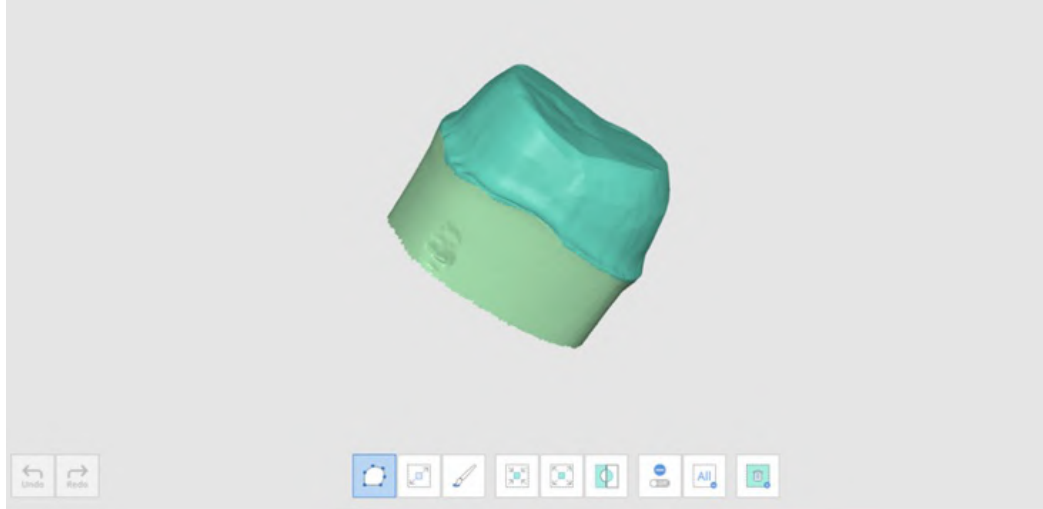

- ย่อพื้นที่ที่เลือกไว้

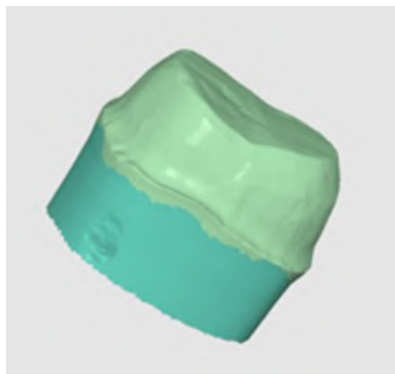


- ขยายพื้นที่ที่เลือกไว้

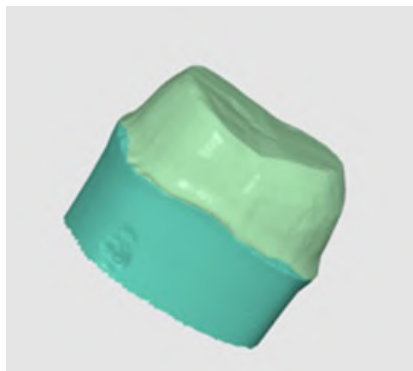



3. คุณสามารถยกเลิกการเลือกพื้นที่ที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือลบพื้นที่ที่เลือกไว้



ปรับการจัดแนวสลับให้เหมาะสม

ปรับการจัดแนวสบฟันให้เหมาะสม คุณสามารถเลือกข้อมูลเป้าหมายและปรับการจัดแนวสบฟันได้

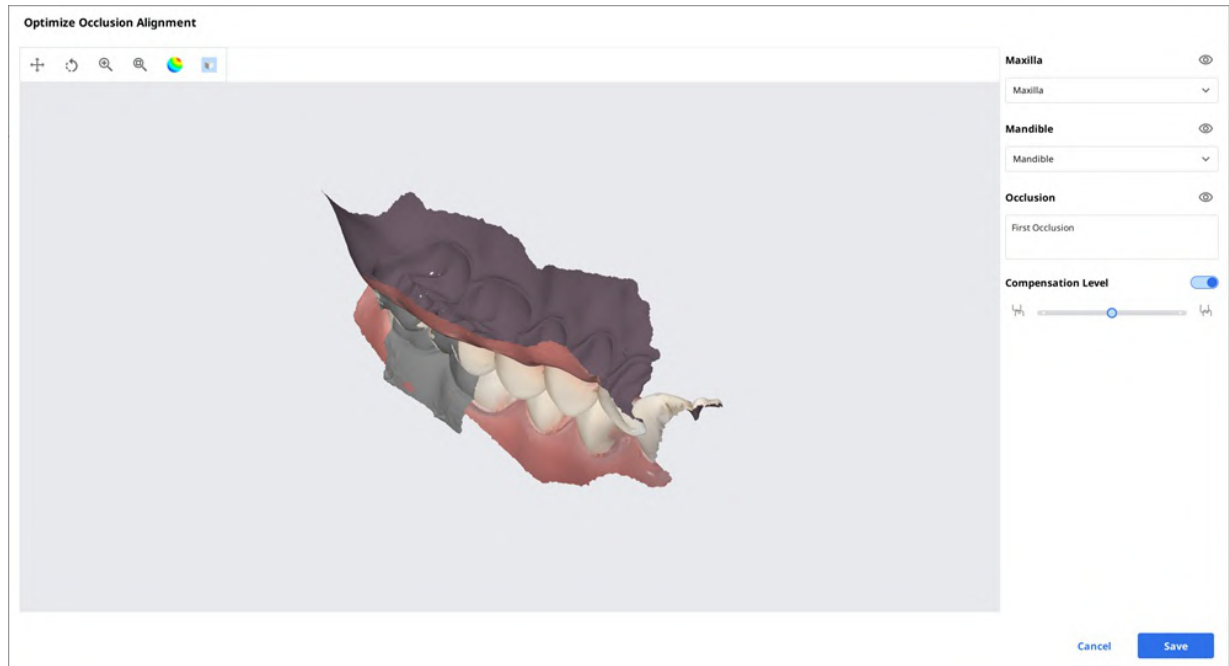


ระดับการชดเชย

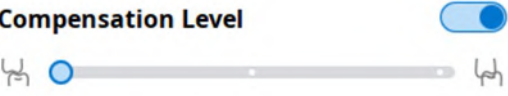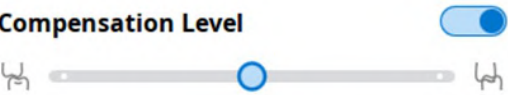ต่ำ	Compensation Level 	
กลาง	Compensation Level 	

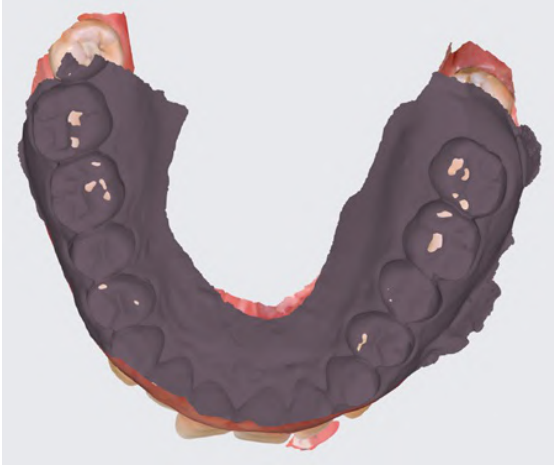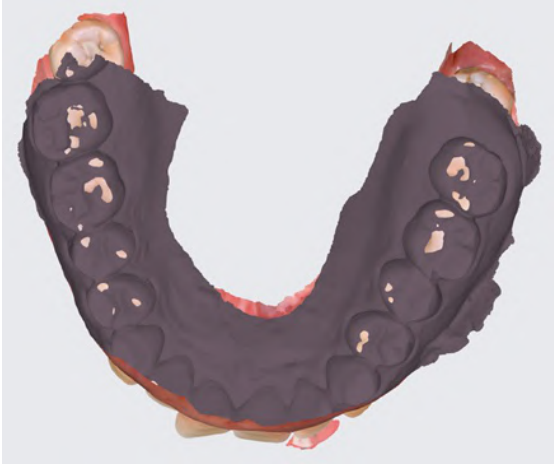สูง	Compensation Level ☒   	
ปิด	Compensation Level ☐   	

การเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่าง

คุณสามารถเล่นภาพการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างที่ถูกบันทึกไว้ใน Medit Scan for Clinics เพื่อการสัมผัสสแกนแบบไดนามิกระหว่างพื้นบนและพื้นล่าง

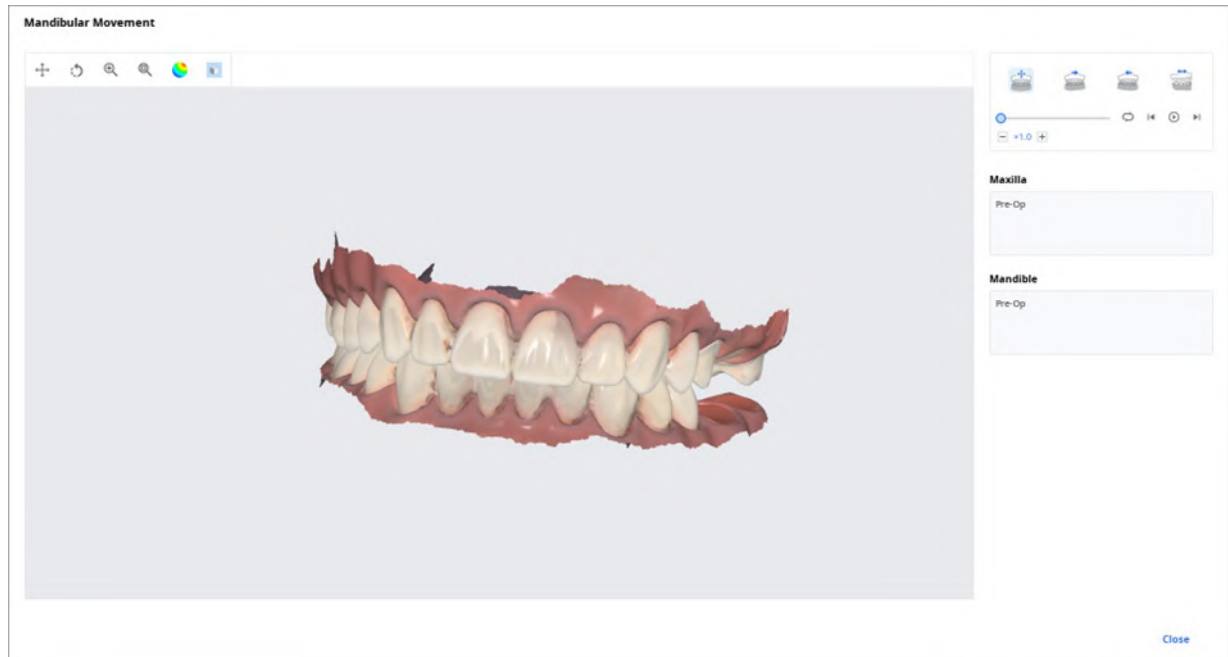

	การเคลื่อนไหวอิสระ	เล่นบันทึกการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างอย่างอิสระ
	การเคลื่อนไหวด้านข้างซ้าย	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางซ้าย
	การเคลื่อนไหวด้านข้างขวา	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางขวา
	การเคลื่อนไหวขากรรไกรไปด้านหน้า	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปด้านหน้า

จัดการข้อมูลสแกนหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์

คุณสามารถรับผลลัพธ์ข้อมูลสแกนหลายตำแหน่งได้จากแอปพลิเคชัน Medit Scan

Medit Link มีฟังก์ชันในการจัดการผลลัพธ์ผ่าน "โปรแกรมดูไฟล์"

วิธีการจัดการผลลัพธ์หลายรายการ


เมื่อผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์สแกนหลายตำแหน่งจาก Medit Scan for Clinics Medit Link จะแสดงตัวเลือกในการเลือกผลลัพธ์

รายการผลลัพธ์จะถูกแสดงตามชื่อ และคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรายการ

โมเดลที่เลือกไว้จะถูกแสดงใน "แผนผังข้อมูล" และ "พื้นที่แสดงโมเดล"



คุณสามารถดูรายการและเปลี่ยนแปลงรายการได้โดยใช้ไอคอนลูกศร

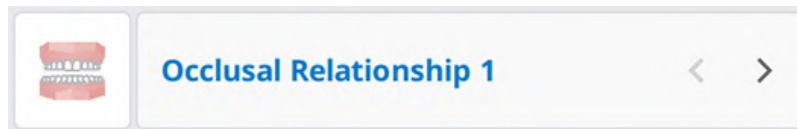

ตัวเลือกมุมมอง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมุมมองเพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box ได้

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

ตัวกรองสถานะ

แสดงหรือซ่อนตัวกรองแต่ละรายการที่แสดงสถานะของเคส ตัวกรองสถานะที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกแสดงบนหน้าจอใน Case Box/Work Box/In Box/Order Box

คุณสามารถค้นหาเคสที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยตัวกรองสถานะ

- คุณสามารถคลิกสถานะที่คุณต้องการดูเพื่อแสดงเฉพาะเคสในสถานะนั้นได้
- คุณสามารถเลือกได้หลายสถานะในแต่ละครั้ง

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการกรองต่อไปนี้:

Box	ตัวกรองสถานะ
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

รายการตาราง

เลือกรายการที่จะแสดงในรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการตารางหรือปรับความกว้างคอลัมน์ของตารางในมุมมองรายการเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้มากที่สุด

สำหรับแต่ละช่อง จะมีรายการตารางต่อไปนี้:

Box	รายการตาราง
Patient	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / เพศ / หมายเลขเคส / วันที่ลงทะเบียน / วันเกิด / วันที่สแกนล่าสุด
Case Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันเกิด / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
Order Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด
In Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก
Work Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่สแกน / ชื่อคลินิก / วันที่สั่งทำ

ประเภทมุมมอง

เปลี่ยนประเภทมุมมองระหว่างมุมมองแกลเลอรีและมุมมองรายการบน Case Box

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกประเภทมุมมองต่อไปนี้:

Box	ตัวเลือกประเภทมุมมอง
Patient	มุมมองรายการ
Case Box	มุมมองรายการ / มุมมองแกลเลอรี
Order Box	มุมมองรายการ
In Box	มุมมองรายการ
Work Box	มุมมองรายการ

การจัดกลุ่ม

เลือกตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อจัดประเภทและจัดเรียงเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการจัดกลุ่มต่อไปนี้:

Box	ตัวเลือกการจัดกลุ่ม
Case Box	ไม่มี / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ
Order Box	ไม่มี / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
In Box	ไม่มี / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
Work Box	ไม่มี / วันส่งมอบที่ร้องขอ

หมายเหตุ

ตัวเลือกการจัดกลุ่มไม่สามารถใช้ได้ ใน Patient, Case Talk และ Trash Box

การเรียงลำดับ

เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับเพื่อเปลี่ยนลำดับเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการเรียงลำดับต่อไปนี้:

Box	การจัดกลุ่ม	ตัวเลือกการเรียงลำดับ
Patient	-	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / วันเกิด / วันที่ลงทะเบียน / หมายเลขเคส / วันที่สแกนล่าสุด
Case Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	ชื่อผู้ป่วย	วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / ชื่อห้องแล็บ
Order Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
In Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / ชื่อคลินิก
Work Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก

หมายเหตุ

ตัวเลือกการเรียงลำดับไม่สามารถใช้ได้ ใน Patient, Case Talk และ Trash Box

การกรองและการค้นหา

กรองตามผู้ป่วย

กรองและแสดงเคสตามชื่อผู้ป่วย คุณสามารถสร้างรายการได้โดยการกรองเฉพาะผู้ป่วยที่คุณต้องการดำเนินการ

MEDIT Link

 **Case Box** Patient 

 ✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. ป้อนชื่อผู้ป่วย

Patient 

won|

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. เลือกผู้ป่วยจากผลการค้นหาด้านล่าง

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. เฉพาะเคสของผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

MEDIT Link 3.2.0		Wonhoon Choi_clinic			
Case Box		wonhoonchoi / - / - / -		+ 2	
☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed				View Options	
Total Cases: 20		2018-01-01-2023-10-24		All / Contains	
Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 ๐๙:๑๐	8:10
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 ๐๙:๐๙	8:09
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 ๐๙:๑๔	2023-02-09 ๐๙:๓๕
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 ๐๙:๐๕	2023-02-09 ๐๙:๓๕
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 ๐๙:๐๖	3:06
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 ๐๙:๔๑	2023-02-09 ๐๙:๓๕
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 ๐๙:๑๓	2023-02-09 ๐๙:๓๕
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 ๐๙:๑๑	11:27
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 ๐๙:๑๓	7:39
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 ๐๙:๑๖	2023-02-09 ๐๙:๑๐
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 ๐๙:๕๐	2023-02-09 ๐๙:๓๕
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 ๐๙:๓๐	2022-10-11 ๐๙:๕๑
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 ๐๙:๑๐	10:28

การตามวันที่

กรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. เลือกระยะเวลาจากรายการ

- ทั้งหมด: แสดงเคสทั้งหมด
- ระยะเวลาที่กำหนดเอง: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาดังกล่าว
- วันนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดวันนี้
- เมื่อวาน: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อวาน
- 7 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 7 วันก่อนหน้า โดยไม่รวมวันนี้
- 30 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 30 วันก่อนหน้า โดยไม่รวมวันนี้
- เดือนนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนนี้
- เดือนก่อนหน้า: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

All

▼

Search / Contains

🔍

มีเกณฑ์การค้นหาต่อไปนี้อยู่ในแต่ละช่อง:

Patient	ทั้งหมด, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย
Case Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อห้องแล็บ
Order Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ID คำสั่งทำ
In Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Work Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Case Talk	ชื่อ Case Talk (ประกอบด้วย), ชื่อผู้ป่วย (เท่ากับ)
Trash Box (คลินิก)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ถูกลบโดย
Trash Box (ห้องแล็บ)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ถูกลบโดย

คุณสามารถเลือกเกณฑ์การค้นหา และเลือกได้ระหว่างตรรกะ ประกอบด้วย และ เท่ากับ

All

▼

All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส

การสร้างเคส

สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

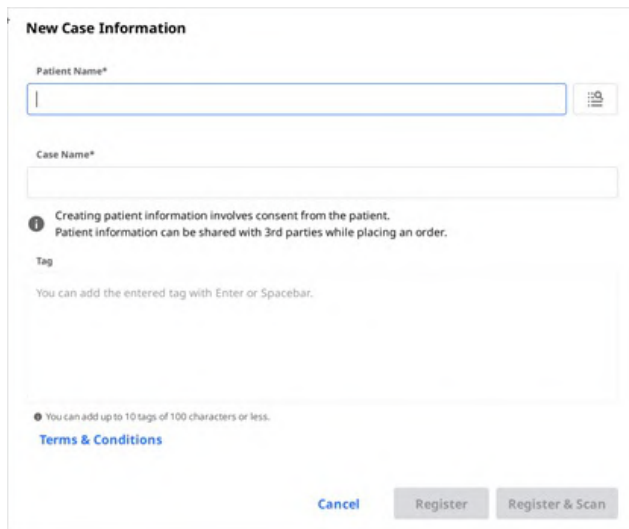

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with a note "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: A note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less." and a link "Terms & Conditions".
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. ป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้ป่วยและชื่อเคส

- หากคุณป้อนชื่อที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย ผู้ป่วยใหม่จะถูกเพิ่ม
- หากคุณป้อนชื่อที่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถเลือกมันได้จากรายการ
- หากลงทะเบียนเคสสำหรับผู้ป่วยที่มีอยู่ ให้คลิกไอคอนรายชื่อผู้ป่วยเพื่อเลือกผู้ป่วยที่มีอยู่



- ในกล่องโต้ตอบรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอยู่ได้

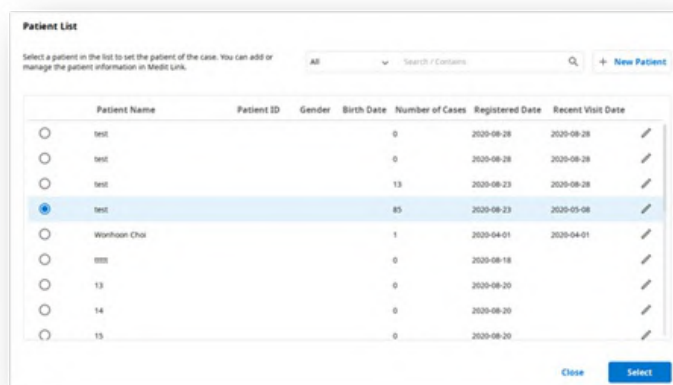

The "Patient List" dialog box shows a table of existing patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. The first four rows have "test" as the patient name. The fifth row has "Worhan Choi". The last three rows have "13", "14", and "15" as patient names. The "Number of Cases" column shows 0, 0, 13, 85, 1, 0, 0, and 0 respectively. The "Registered Date" column shows 2020-09-28, 2020-09-28, 2020-09-23, 2020-09-23, 2020-04-01, 2020-08-18, 2020-08-20, and 2020-08-20. The "Recent Visit Date" column shows 2020-09-28, 2020-09-28, 2020-09-28, 2020-05-08, 2020-04-01, and empty for the last three rows. There are radio buttons to the left of each row, and the fourth row (with 85 cases) is selected. There are "Close" and "Select" buttons at the bottom right.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08
☐	Worhan Choi				1	2020-04-01	2020-04-01
☐	13				0	2020-08-18	
☐	14				0	2020-08-20	
☐	15				0	2020-08-20	

3. ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้

4. คลิก "ลงทะเบียนและสแกน" เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเคสและดำเนินการสแกนต่อ

- **ลงทะเบียน**: คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลัก สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อลงทะเบียนหลายเคส
- **ลงทะเบียนและสแกน**: ย้ายไปที่แท็บแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับเคส

สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. ป้อนหรือเลือกชื่อคลินิก

3. ป้อนชื่อคนไข้และชื่อเคส ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้

4. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันที่งานเสร็จสมบูรณ์

5. หลังจากลงทะเบียนเคส คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลัก

การแก้ไขเคส

แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

⋮

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

ⓘ

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

- คลิกไอคอน "ค้นหา" เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ป่วย โปรดทราบว่าไม่สามารถแก้ไขมันได้โดยตรง คุณสามารถค้นหาชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน และสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยจากรายการได้

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

- ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน
- หากต้องการสร้างผู้ป่วยใหม่ ให้กดปุ่ม "ผู้ป่วยใหม่"
- ใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับผู้ป่วย
- คลิก "ใช้" เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

- คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☐ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

- คลิก "ใช้" หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเคสที่ได้รับผ่านการสั่งทำใน In Box ได้

การโคลนเคส

โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการโคลนข้อมูลประเภทใดไปยังเคสใหม่

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. เลือกว่าจะโคลนเฉพาะข้อมูลแบบฟอร์มเท่านั้นหรือข้อมูลทั้งหมด
4. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น

โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. ทำซ้ำข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างเคสใหม่
3. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น

การลบเคส

ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)

1. คลิกที่ไอคอน "ลบ"



2. คลิก "ตกลง" เพื่อลบเคส

Warning
 Do you want to delete the case?

Cancel OK

3. เคสที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยัง Trash Box และสามารถถูกกู้คืนได้หากจำเป็น

ข้อมูลแบบฟอร์ม

คุณสามารถป้อนข้อมูลแบบฟอร์มตามโปรแกรมที่เชื่อมต่อและประเภทการรักษาได้

ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการสแกนหรือโปรแกรม CAD และการสั่งทำ

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม

1. เลือกว่าคุณจะป้อนข้อมูลการรักษาตามฟันหรือส่วนโค้งแนวฟัน
2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการคำสั่งทำโดยอัตโนมัติ
3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม


1. เลือกโปรแกรมการสแกนที่คุณต้องการใช้
2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะกำหนดกลยุทธ์การสแกนของคุณ: ฟัน/เฟล็กซีเบิลมัลติตาย/มัลติตาย
3. วิธีการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมการสแกนที่เลือก

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
ฟัน	O	O
ส่วนโค้งแนวฟัน	O	O
เฟล็กซีเบิลมัลติตาย	X	O
มัลติตาย	X	O

4. เลือกหมายเลขฟัน ส่วนโค้งแนวฟัน หรือตายสำหรับขั้นตอนการสแกน
5. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการโดยอัตโนมัติ
6. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ

การเชื่อมต่อฟันเข้ากับสะพานฟัน

คุณสามารถเชื่อมต่อฟันหลายซี่เข้ากับสะพานฟันได้ เมื่อใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับฟันข้างเคียงหลายซี่ คลิกไอคอนสะพานฟันข้างฟันที่เลือกเพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ

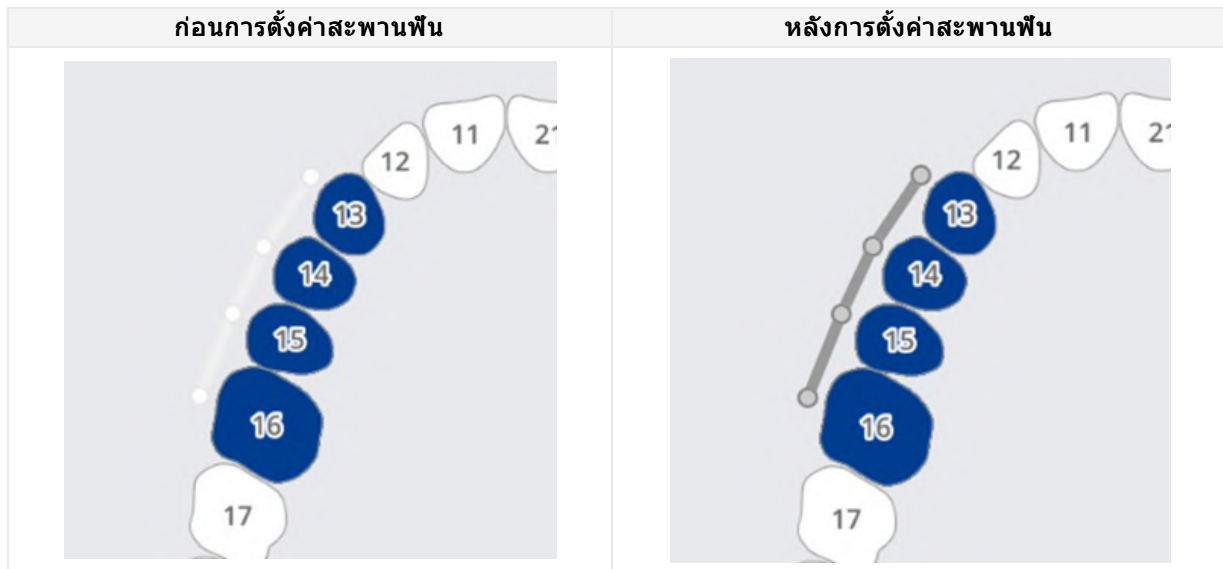

การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน

จะมีตัวเลือกการสแกนต่าง ๆ ให้เลือกโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้งาน

ตัวเลือกการสแกนที่เลือกไว้จะถูกส่งผ่านไปยังแต่ละโปรแกรมการสแกน

Medit Scan for Labs

ตัวเลือกทั่วไป

	ฟันข้างเคียง	ทำเครื่องหมายฟันที่ถูกเตรียมและฟันข้างเคียง แล้วส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	ฟันคู่สบ	ทำเครื่องหมายฟันคู่สบโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	แบบจำลองการสบฟัน	แสดงตัวเลือกสำหรับการเลือกแบบจำลองการสบฟันในโปรแกรมการสแกน
	ตัวทำเครื่องหมายการเคลื่อนที่	อนุญาตให้ใช้กลยุทธ์การสแกน "การเคลื่อนขากรรไกร" ในโปรแกรมการสแกน

ตัวเลือกตามฟัน

	สแกนบอดี้	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนสแกนบอดี้ในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนโมเดลก่อนการรักษา	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนโมเดลก่อนการรักษาในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนการแต่งซี่ฟัน	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนการแต่งซี่ฟันในโปรแกรมการสแกน

การเพิ่มไปยังรายการโปรด

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียนเป็นรายการโปรด

รายการโปรดที่ลงทะเบียนไว้จะถูกจัดการเป็นเทมเพลตและสามารถถูกแชร์ผ่านคุณสมบัติการส่งออกและนำเข้าได้

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. เลือกหมายเลขพื้น
2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - ประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสีสามารถถูกบันทึกเป็นรายการโปรดได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกทั้งหมดก็ตาม
3. คลิกที่ไอคอนรูป "ดาว"

4. ชุดรวมของพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ โดยไม่รวมหมายเลขพื้น อยู่ในรายการค้นหาโปรดของคุณ

จัดการเทมเพลตโปรด

คุณสามารถลงทะเบียน จัดการ และแชร์เทมเพลตประเภทต่าง ๆ ได้

เพิ่ม	เพิ่มเทมเพลตใหม่
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อเทมเพลตปัจจุบัน
ลบ	ลบเทมเพลตปัจจุบัน
ส่งออก	ส่งออกเทมเพลตปัจจุบันเป็นไฟล์
นำเข้า	นำเข้าไฟล์เทมเพลต

ทำงานกับการสแกน/CAD

กระบวนการสแกน

ตามข้อมูลที่ป้อนไว้ คุณจะดำเนินการต่อการสแกน

1. ป้อน/บันทึกข้อมูลการรักษาและเลือกตัวเลือกการสแกนที่จำเป็น
2. คลิกปุ่ม "สแกน" ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

กระบวนการ CAD


Medit Link มีแอปบูรณาการ DentalCAD เพื่อเชื่อมต่อ Medit Link กับ DentalCAD

1. ติดตั้งแอป DentalCAD Integration ใน App Box
2. ไปที่ รายละเอียดเคส แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ที่ตัวเปิดด่วน
3. โปรดระบุเส้นทางไปยังแอป DentalCAD ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณในกล่องโต้ตอบแบบผุดขึ้น
4. โปรดป้อนรายละเอียดเคสของเคสที่ถูกสแกน แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ซึ่งจะมีกล่องโต้ตอบผุดขึ้นสำหรับสร้างไฟล์ dentalProject
5. ลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับ DentalCAD แล้วคลิก "เปิด" เพื่อเปิดโปรแกรม CAD
6. หากคุณติดตั้งแอป DentalDB Integration ผลลัพธ์ CAD จะถูกส่งไปยังเส้นทางการบันทึกที่ระบุไว้ใน exocad โดยอัตโนมัติ (บัญชีห้องแล็บเท่านั้น)


ใช้แอปเพิ่มเติม

เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน

คุณสามารถเรียกใช้แอปเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยการคลิกไอคอนแอปที่ติดตั้งไว้ในตัวเปิดด่วน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากไอคอนเหล่านั้น

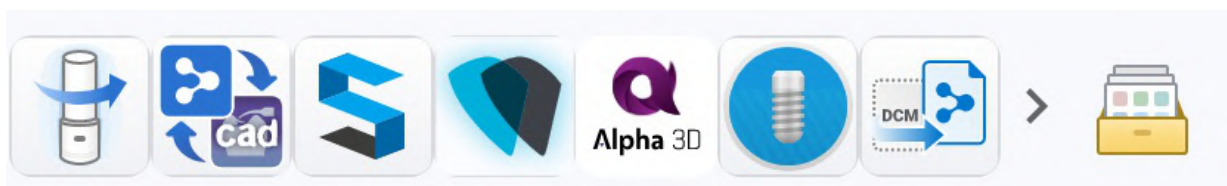

การจัดการตัวเปิดแอป

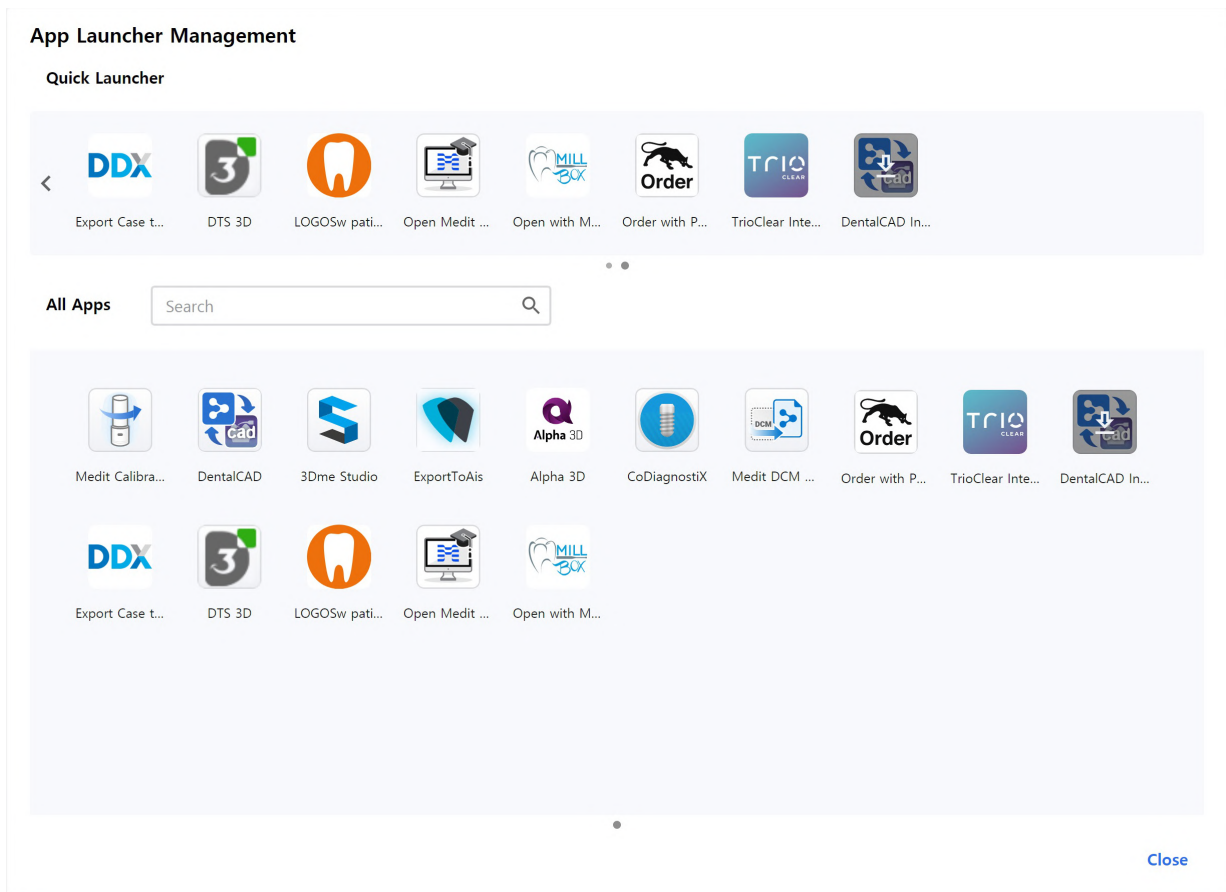

ตัวเปิดด่วน

คุณสามารถกำหนดได้ว่าแอปใดบ้างจะปรากฏในตัวเปิดด่วน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากหรือสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มแอปที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อจัดระเบียบ

แอปทั้งหมด

แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอนแอปเพื่อเพิ่มแอปลงในตัวเปิดด่วนได้ จากการคลิกขวาที่เมนูบริบท คุณยังสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอปได้

รับไฟล์ผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลการสแกน

นอกเหนือจากการแชร์ผลลัพธ์กับพันธมิตรผ่านคำสั่งทำแล้ว Medit Link ยังช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ของคุณในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งออก

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

118

ส่งออกไฟล์ไปที่	ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์
ชื่อโฟลเดอร์	ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่และจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ทั้งหมดไว้ในนั้น ชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยกฎการตั้งชื่อ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อโฟลเดอร์
ชื่อไฟล์	ตั้งชื่อไฟล์สำหรับผลลัพธ์ กฎการตั้งชื่อจะตั้งชื่อไฟล์เริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อไฟล์
ประเภท	เลือกโปรแกรมการออกแบบที่คุณต้องการใช้ Medit Link จะปรับไฟล์ตามที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถดำเนินการออกแบบต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดแนวแกนเพิ่มเติม
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดไฟล์	บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว
ผสมรวม mesh แต่ละรายการ	ผสมรวมผลลัพธ์ของขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างเข้ากับฟันแต่ละซี่ มันมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถนำเข้าไฟล์หลายไฟล์ลงในโปรแกรมได้
ส่งออกความสัมพันธ์สปีนทั้งหมด	เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สปีนหลายรายการจากแอปสแกน คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์สปีนทั้งหมดได้ในคราวเดียว
บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF	บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF พร้อมผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส

คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ของเคสหรือหลายเคสพร้อมกันด้วยตัวเลือก "ส่งออก" เหนือรายการเคสใน Case Box และ Work Box

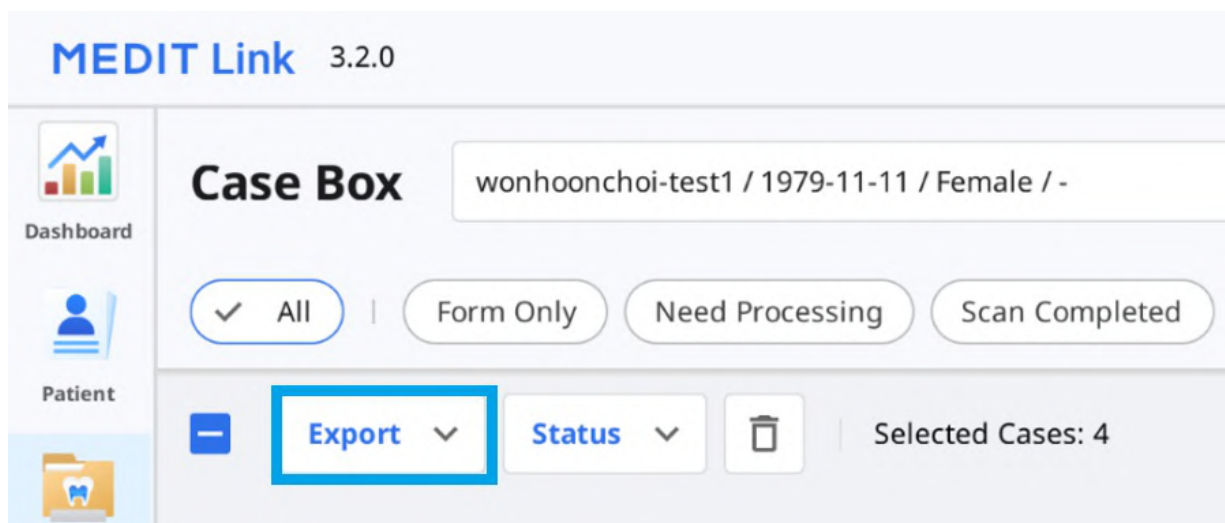

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. เลือกทุกเคสที่คุณต้องการส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการ

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. คลิก "ส่งออก" และเลือก "ไฟล์ผลลัพธ์"

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทาง ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

หมายเหตุ

ไฟล์ "ชื่อโฟลเดอร์" และ "ชื่อไฟล์" ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อส่งออกไฟล์หลายเคส
ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเลือก "กฎสำหรับชื่อ
โฟลเดอร์" และ "กฎสำหรับชื่อไฟล์" ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก

- คลิก "ส่งออก"
- คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

?


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์

คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลการสแกนสำหรับเคสได้ด้วยไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์

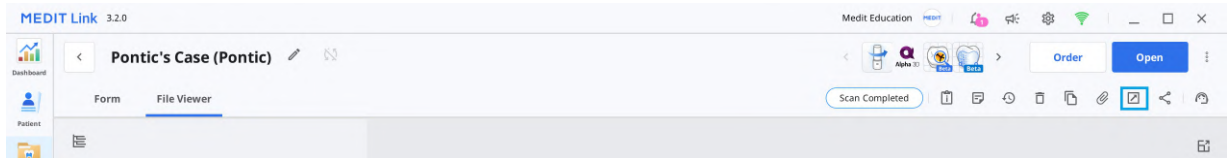

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์



4. ตั้งค่าไฟล์เดอร์ปลายทาง ชื่อไฟล์เดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

5. ในแท็บ "รายการไฟล์" คุณสามารถเลือกไฟล์ที่จำเป็นสำหรับเคสได้โดยยกเลิกการเลือกไฟล์ที่ไม่จำเป็น

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒ Base

☒

Mandible

☒ Base

☒

Occlusion

☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒ Maxilla
☒ Mandible

☒

Face Scan Data

☒ Face Scan Data

Close

Export

6. คลิก "ส่งออก"

7. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

?

Exporting successfully completed.


Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล


คุณสามารถส่งออกไฟล์ในกลุ่มข้อมูลเฉพาะได้จากเมนูแบบขยายในโปรแกรมดูไฟล์

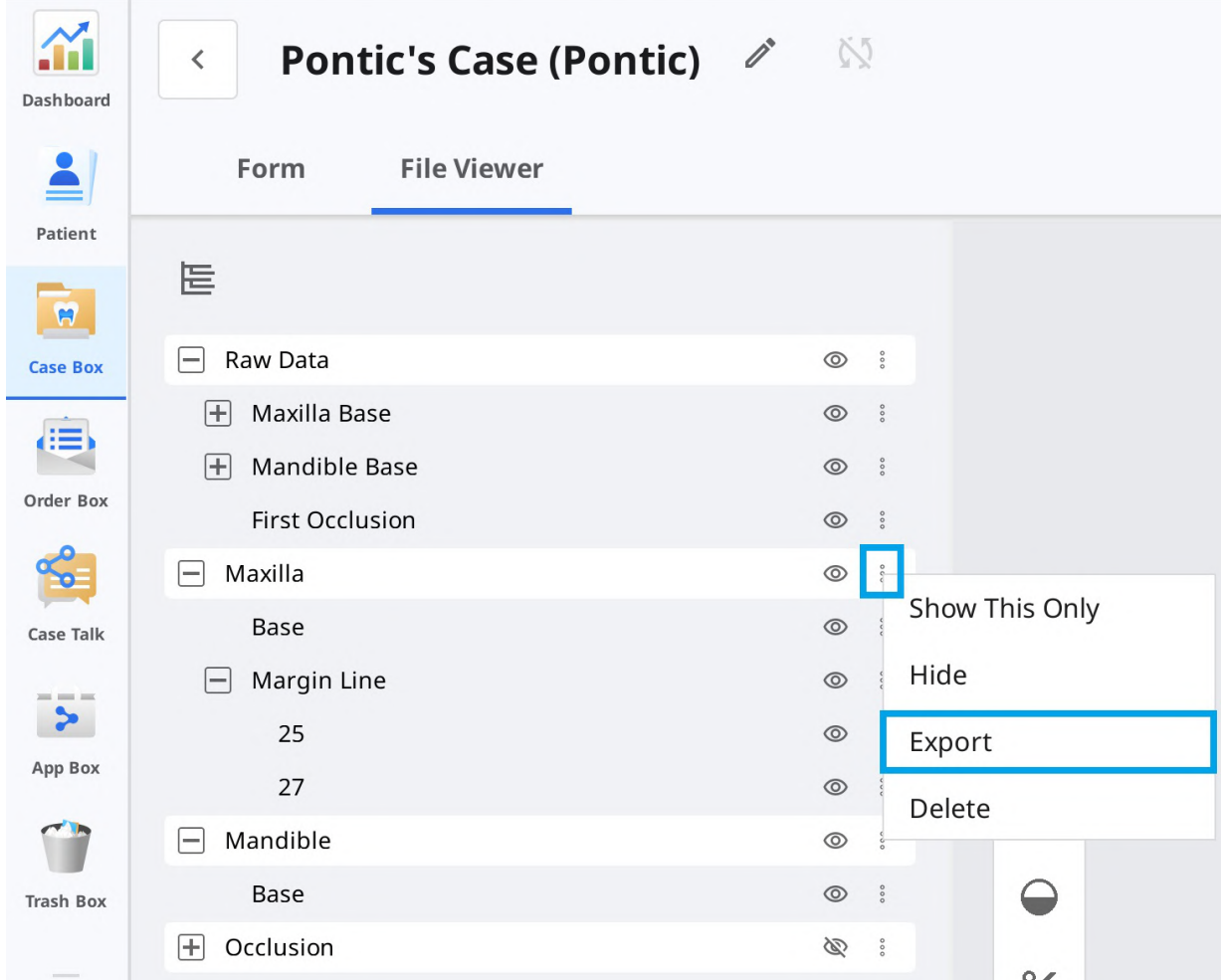

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอนสามจุดถัดจากกลุ่มข้อมูลหรือเอนทิตีในแผนผังข้อมูลในแท็บโปรแกรมดูไฟล์



4. จากนั้นคลิก "ส่งออก"

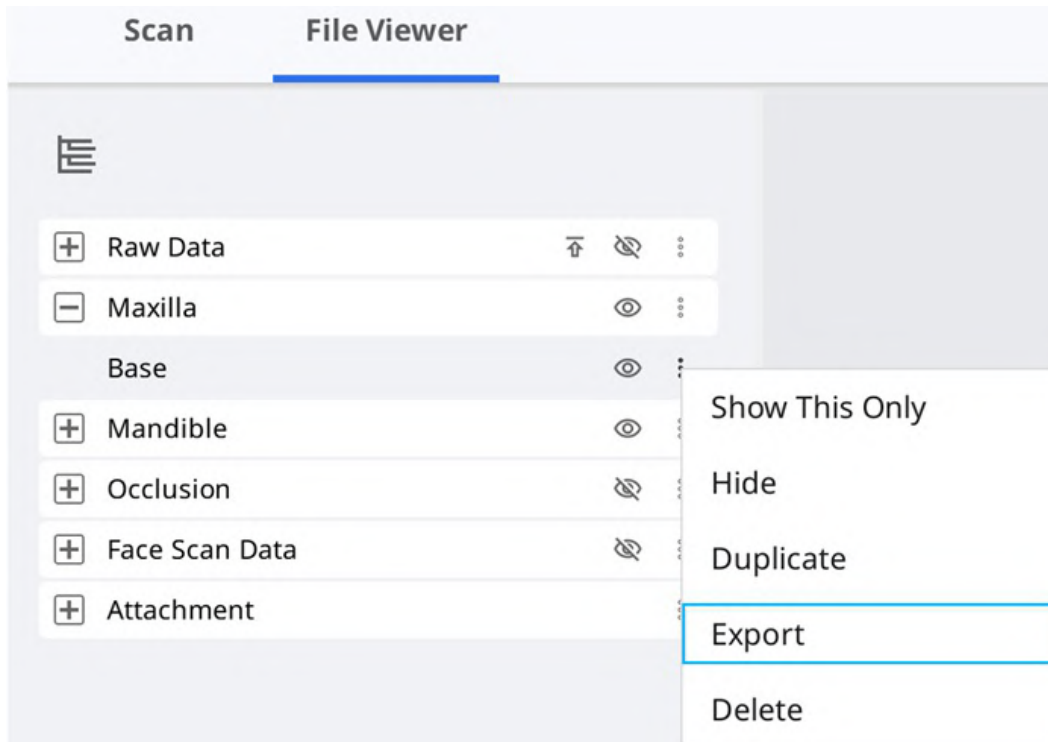

5. ตั้งค่าโพลเดอร์ปลายทาง ชื่อโพลเดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเลือกในแผนผังข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในรายการไฟล์เท่านั้น

Export Files in This Case

OptionsFile List

☐

Maxilla

☐

Base

☒

Mandible

☒

Base

☐

Occlusion

☐

First Occlusion

☐

Second Occlusion

☐

Dynamic Occlusion

☐

Free

☐

Maxilla

☐

Mandible

☐

Face Scan Data

☐

Face Scan Data

Close

Export

7. คลิก "ส่งออก"

8. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

ส่งออกรายการเคสเป็น CSV

Medit Link มีฟังก์ชันในการส่งออกรายการเคสในรูปแบบ CSV

คุณสามารถส่งออกรายการเคสพร้อมข้อมูลพื้นฐานและจัดการเคสได้อย่างง่ายดาย

- ไปที่ Case Box, Order Box, In Box หรือ Work Box.
- เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออก

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi Clinic

Case Box

wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

+ 2

Export

Status

Selected Cases: 4


2018-01-01-2023-10-24

All

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
☒ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
☒ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. คลิก "ส่งออก" และเลือก "รายการเคส (ตามที่แสดง)" หรือ "รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด)"

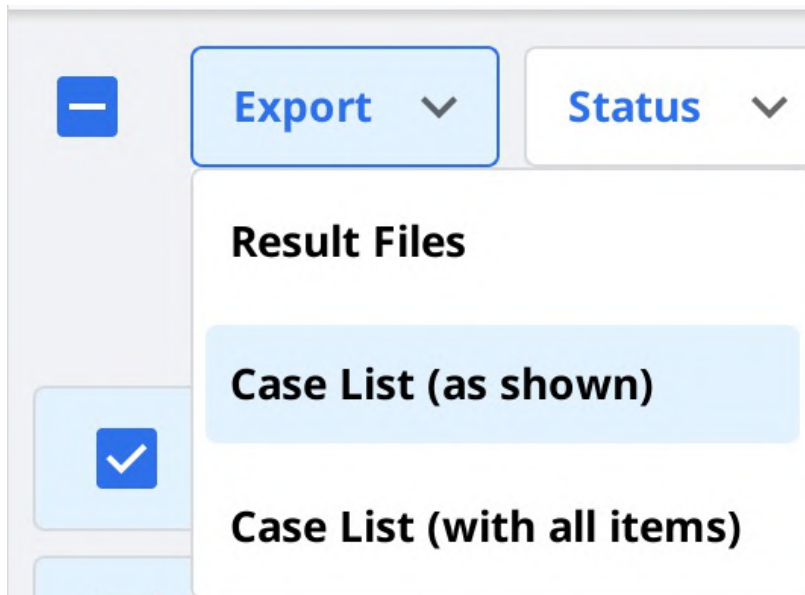

หมายเหตุ

รายการเคส (ตามที่แสดง): ส่งออกรายการเคสด้วยรายการที่ถูกแสดงอยู่บนหน้าจอ ไปที่ตัวเลือกมุมมอง > รายการตาราง เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการตามที่คุณต้องการ
รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด): ส่งออกรายการเคสพร้อมรายการทั้งหมด รวมถึงสถานะ ชื่อเคส วันเกิด ข้อมูลแบบฟอร์ม วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ และชื่อห้องแล็บ

4. กำหนดเส้นทางและชื่อไฟล์ จากนั้นบันทึกการรายการ
5. รายการเคสจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ CSV

ส่งออกเส้นขอบ


Medit Scan for Clinics มีฟังก์ชันสร้างเส้นขอบ และ Medit Link สามารถถ่ายโอนเส้นขอบไปยังโปรแกรม CAD ได้

ส่งออกเส้นขอบเป็นสี

โดยทั่วไปแล้ว Medit Link จะแปลงเส้นขอบเป็นสีและส่งออกผลลัพธ์พร้อมขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างไปด้วยกัน คุณสามารถสร้างเส้นขอบใน cad โดยอ้างอิงข้อมูลสีได้

ตัวอย่าง:

ขากรรไกรบน

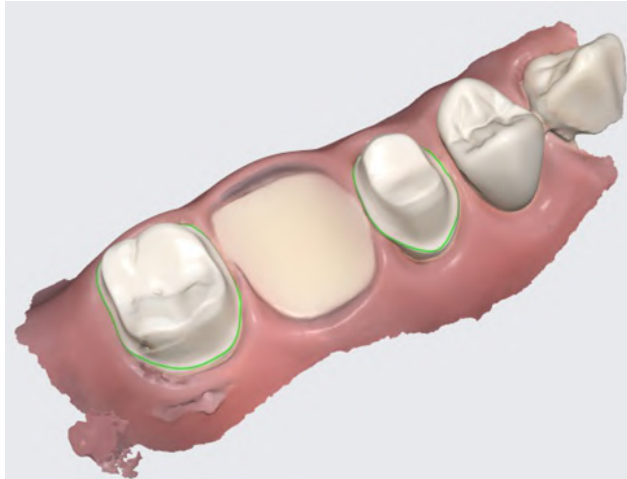

ผลลัพธ์โดยมีเส้นขอบเป็นข้อมูล

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับรูปแบบที่มีข้อมูลสี เช่น meditMesh, OBJ และ PLY ไม่แปลงเส้นขอบเป็น STL

หมายเหตุ



ประเภท > 3Shape ไม่รองรับคุณสมบัตินี้

ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์

ในกรณีของ Exocad นั้น Medit Link จะส่งออกเส้นขอบไปที่ "~margin.xyz" ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ exocad ได้โดยตรง

คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ใน exocad ได้โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

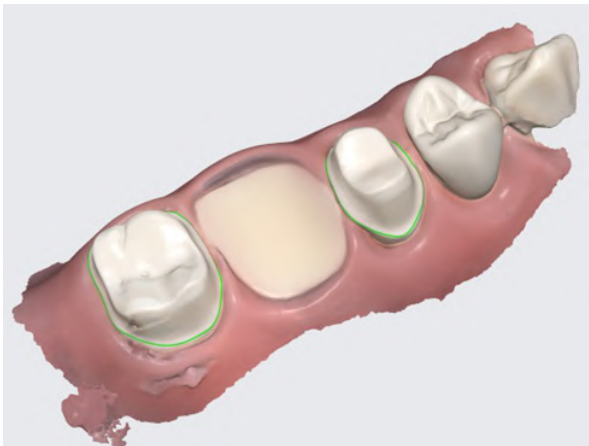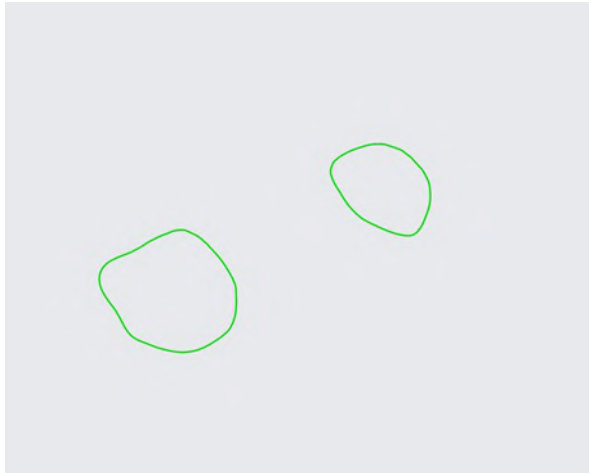ขากรรไกรบน	เส้นขอบ
	
ผลลัพธ์โดยมีเส้นขอบเป็นข้อมูล	เส้นขอบที่ถูกส่ง ออกเป็นแต่ละไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link

Medit Link มีฟังก์ชันดาวน์โหลด

หากต้องการรับไฟล์ผลลัพธ์โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Medit Link คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากบริการเว็บ Medit Link

หมายเหตุ


ข้อมูลต้องถูกอัปโหลดบน Medit Cloud เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

มีฟังก์ชันดาวน์โหลดอยู่ในเมนูต่อไปนี้ของบริการเว็บ Medit Link

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

คุณจะพบปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวามือ

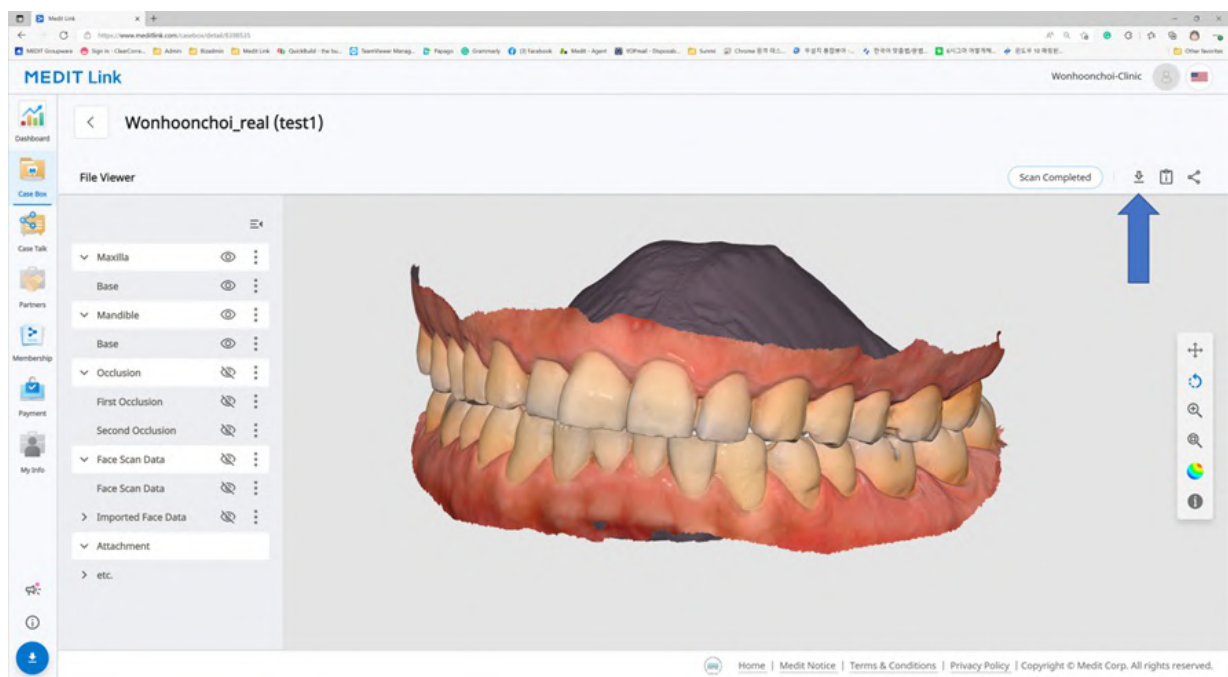

Web Viewer

เมื่อคุณแชร์เคสโดยใช้ Case Talk คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะอนุญาตการดาวน์โหลดหรือไม่

หากคุณทำเครื่องหมายที่ “ให้อนุญาตการดาวน์โหลด” และแชร์เคส ผู้ใช้ทุกคนที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

ใน Web Viewer คุณจะพบไอคอน "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาบน

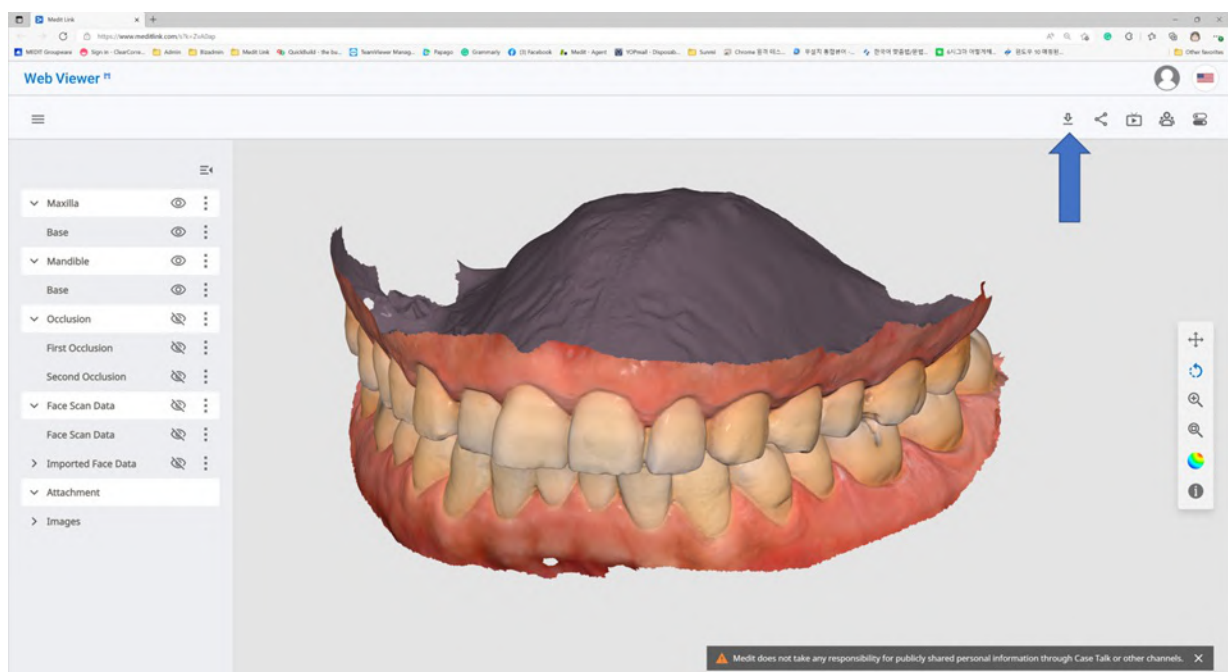

1. คลิก "ดาวน์โหลด"



2. เลือกรูปแบบ mesh จากกล่องโต้ตอบดาวน์โหลด

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. จากนั้นคลิก "ตกลง"

131

สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ

คุณสามารถสั่งทำเคสด้วยข้อมูลที่ได้อาจโปรแกรมที่เชื่อมต่อและถูกแนบโดยผู้ใช้อย่างง่ายดาย

การสั่งทำเคส

คุณสามารถส่งคำสั่งทำสำหรับพันธมิตรของคุณได้ใน Case Box

1. คลิกปุ่ม "สั่งทำ"
2. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งทำของคุณ

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR

[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. เลือกพันธมิตร
4. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็บรายการคำสั่งทำ
 - คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเปิดเผยชื่อผู้ป่วยหรือไม่
5. ตรวจสอบไฟล์ที่จะสั่งทำจากแท็บรายการไฟล์
6. ป้อนวันส่งมอบที่คุณต้องการ
 - ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 7 วันหลังจากวันที่สั่งทำ
7. คุณสามารถเพิ่มบันทึกและแท็กไปยังพันธมิตรของคุณเพื่อร่างรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงได้
8. เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สبฟันหลายรายการจากแอปสแกน คุณสามารถส่งผลลัพธ์สบฟันทั้งหมดได้ในคราวเดียวโดยทำเครื่องหมายที่ "สั่งทำความสัมพันธ์ของสบฟันทั้งหมด"

9. ดำเนินการต่อกับคำสั่งทำของคุณ

ยืนยันคำสั่งทำ (In Box)

- ยอมรับคำสั่งทำเมื่อได้รับมัน
- คำสั่งทำที่ได้รับการยอมรับจะถูกส่งต่อไปยัง Work Box

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)

- คุณสามารถยกเลิกคำสั่งทำได้ก่อนที่พันธมิตรของคุณจะยอมรับ
- เคสที่ถูกยกเลิกสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

test's Case (test)

Order File Viewer

Cancel

Pending

ปฏิเสธคำสั่งทำ (In Box)

- คุณสามารถปฏิเสธคำสั่งทำที่ได้รับได้
- เคสที่ถูกปฏิเสธสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเคสที่คุณสั่งทำได้จาก Order Box ในบัญชีคลินิก คุณสามารถตรวจสอบเคสที่คุณได้รับจาก In Box ได้ในบัญชีห้องแล็บ

MEDIT Link 3.2.0

test's Case - Clone / wh-clinic-ds...

Order File Viewer

Accepted

Order ID: 13455074

Patient Name: *** Partner Name: wh-clinic-dso-3

Scanned Date: 2023-08-04 1:58 Order Date: 2023-10-26 4:38

Requested Delivery Date: 2023-11-02 Expected Delivery Date: 2023-11-02

08:00 08:00

Memo

Tags

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

ข้อมูลคำสั่งทำ	ข้อมูลที่สามารถถูกรวมอยู่ในคำสั่งทำได้มีดังนี้: ID คำสั่งทำ/ชื่อผู้ป่วย/ชื่อบัญชี/วันที่สแกน/วันที่สั่งทำ/วันส่งมอบ/วันที่ครบกำหนดส่งมอบ/บันทึก คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำและ ข้อมูลการจัดส่งได้
รายการคำสั่งทำ	รายการคำสั่งทำจะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำ
การจัดส่ง	ป้อน/ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง

การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)

ป้อนข้อมูลการจัดส่งของเคสที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มต้นจัดส่ง

1. คลิกแท็บการจัดส่ง
2. ป้อนข้อมูลการจัดส่งแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. ข้อมูลที่ป้อนจะถูกส่งไปยังพันธมิตรของคุณ

การจัดการวันส่งมอบ

คุณสามารถกำหนดวันส่งมอบที่คาดหวังได้เมื่อทำการสั่งทำ และข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ

การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)

- เมื่อสั่งทำจาก Case Box คุณสามารถระบุวันส่งมอบที่ร้องขอได้

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- ค่าเริ่มต้นคือ 7 วันหลังจากวันที่สั่งทำ
- ป้อนวันที่/เวลาที่คุณต้องการรับสินค้าและดำเนินการต่อกับคำสั่งทำ
- คุณสามารถตั้งเวลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบเลื่อน

การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)

- คุณสามารถป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังสำหรับเคสที่สั่งทำจาก In Box ได้

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0


Total KRW 0

1. ตรวจสอบวันส่งมอบที่ร้องขอกับพันธมิตรและกำหนดเวลาใหม่โดยใช้ปุ่ม "แก้ไข"



2. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันทำงานปัจจุบัน หากจำเป็น คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน

3. คลิก "ใช้"

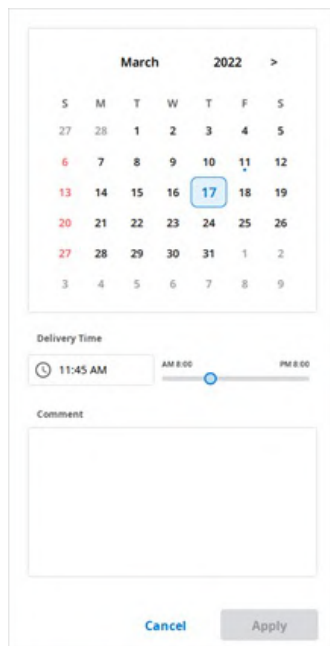

4. วันส่งมอบที่คาดหวังและวันที่จะถูกส่งต่อพร้อมกับคำสั่งทำ
 - คุณสามารถตรวจสอบวันที่และวันที่ได้ใน Order Box
 - คุณสามารถเปลี่ยนวันส่งมอบที่คาดหวังได้ และการเปลี่ยนแปลงจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ
5. คุณสามารถตรวจสอบประวัติเคสได้โดยใช้ปุ่ม "ประวัติ"



การเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)


เมื่องานทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้นเคสจากรายละเอียดเคส

คุณจะพบไอคอนสามจุดทางด้านขวาจากปุ่ม "เปิด" หรือ "สแกนซ้ำ"



เสร็จสิ้นงานโดยคลิกที่ไอคอนและเลือก "Done"

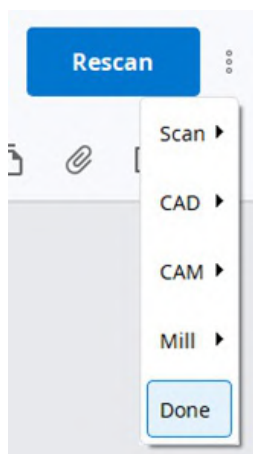

เสร็จสิ้นหลายเคสจากรายการเคส

1. ไปที่ Work Box
2. เลือกเคสทั้งหมดที่จะเสร็จสิ้น

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown

3. คลิก "สถานะ" และเลือก "Done"

เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)

หลังจากเสร็จสิ้นเคสในห้องแล็บ คลินิกจำเป็นต้องยืนยันเคสเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งทำทั้งหมด

คลินิกจะพบปุ่ม "ยืนยันการส่งมอบ" ใน Order Box หากห้องแล็บดำเนินงานเสร็จสิ้น

คลิกที่นี้ กระบวนการสั่งทำทั้งหมดจะเสร็จสิ้น และสถานะเคสจะเปลี่ยนเป็น "Case Completed"

< test's Case - clone (test)

Order File Viewer

Confirm Delivery

Shipped

เสร็จสิ้นเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำใน Case Box

สำหรับเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำไปยังห้องแล็บ คุณสามารถเสร็จสิ้นเคสเหล่านี้ได้จาก Case Box

1. ไปยัง Case Box
2. เลือกเคสที่คุณต้องการเสร็จสิ้น

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. คลิก "สถานะ" และเลือก "Case Completed"

สื่อสารโดยใช้แท็ก

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสของคุณโดยใช้แท็ก และส่งไปยังพันธมิตรของคุณได้

เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่

คุณสามารถป้อนแท็กเมื่อคุณสร้างเคสใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเคส

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

คุณสามารถค้นหาและเลือกแท็กที่คุณเคยใช้ได้อย่างง่ายดาย

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขแท็กในกล่องโต้ตอบคำสั่งทำในขณะที่สั่งทำได้

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส

