

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

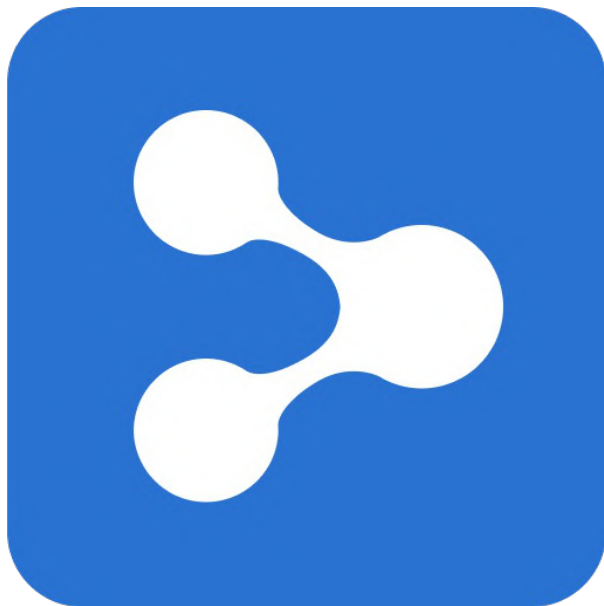


Table of Contents

Medit Link

Giới thiệu	7
Medit Link	7
Tổng quan về dịch vụ	7
Dịch vụ đám mây	8
Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng	9

Medit Link > Installation

Yêu cầu hệ thống	10
Yêu cầu hệ thống đối với Windows	10
Yêu cầu hệ thống đối với macOS	10
Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web	10
Đề xuất cho trình duyệt	10
Tối thiểu đối với thiết bị di động	10
Cài đặt trên Windows	11
Cài đặt trên macOS	14

Medit Link > Getting Started

Đăng ký & Đăng nhập	18
Trang web Medit Link	18
Đăng ký	18
Trang đăng nhập và chào mừng	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Tổng quan về Dashboard	24
Medit Insights	24
Đăng ký Medit Insights	25
Hủy đăng ký Medit Insights	26
Patient	27
Tìm kiếm bệnh nhân	27
Case Box/Work Box	28
Lọc ca	28
Lọc theo bệnh nhân	28
Lọc theo trạng thái	31
Lọc theo khoảng thời gian	31
Lọc theo tìm kiếm	32
Chi tiết ca	32
Order Box/In Box	34
Chi tiết đơn hàng	34
Tab trong Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Tạo một Case Talk	35
Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ	36
Chi tiết Case Talk	38
Web Viewer	39
Chú thích	40
Bình luận	42

Chia sẻ màn hình theo thời gian thực	42
Cây dữ liệu	42
Kiểm soát cây dữ liệu	42
Điều khiển mô hình 3D	43
Partners	45
Tìm kiếm đối tác	45
Danh sách đối tác của tôi	45
Mời đối tác	46
Membership	47
Thành viên	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Bộ nhớ đám mây	49
Đăng ký	49
Hủy đăng ký	51
Gói đăng ký của tôi	52
Chi tiết	53
Đăng ký lại	53
Cách thêm phương thức thanh toán	54
Cách thay đổi phương thức thanh toán	55
Đổi quà	55
Chi tiết	56
Đăng ký mã đổi quà	56
Kích hoạt mã đổi quà	57
Chi tiết thanh toán	57
Xem chi tiết hóa đơn	58
My Info	60
Tài khoản của tôi	60
Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)	60
Máy quét của tôi	61
Menu khác	63
Thông báo & Cập nhật	63
Website liên quan	63
Tải xuống ứng dụng Medit Link	64
 Medit Link > Medit Link App	
Tổng quan	65
Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.	65
Thanh tiêu đề	66
Thông tin tài khoản	66
Thông báo	66
Thông báo & Cập nhật	67
Cài đặt	67
Trạng thái mạng	68
Cài đặt	70
Chung	70
Quản lý lưu trữ	71
Đặt khoảng thời gian	72
Bộ nhớ cục bộ	72
Bộ nhớ đám mây	72
Cài đặt chương trình được kết nối	73
Tùy chọn xuất	73
Công cụ chuyển đổi ca	75

Xuất ca	76
Nhập ca	77
Tùy chọn proxy	79
Giới thiệu	79
Hướng dẫn sử dụng	80
Menu	81
Dashboard	81
Patient	81
Thêm bệnh nhân mới	82
Xóa bệnh nhân	82
Gộp bệnh nhân	83
Case Box/Work Box	83
Tab trong Case Box/Work Box	84
Chức năng trong Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Tab trong Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
All	87
Medit Apps	87
Đã tải về	88
Trash Box	88
Case Synchronization Manager	89
Tải lên	89
Tải xuống	90
Website liên quan	90
File Viewer	92
Cây dữ liệu	92
Công cụ điều khiển mô hình	92
Điều khiển mô hình 3D	92
Điều khiển hình ảnh 2D	94
Công cụ chức năng	94
Chụp ảnh và ghi chú	94
Chụp chỉnh nha	95
Làm đầy lỗ	96
Cắt	97
Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cắn	99
Chuyển động hàm dưới	102
Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer	102
Cách quản lý nhiều kết quả	102
Tùy chọn hiển thị	104
Bộ lọc trạng thái	104
Loại chế độ xem	105
Nhóm	105
Sắp xếp	105
Lọc và Tìm kiếm	107
Lọc theo bệnh nhân	107
Lọc theo ngày	108
Chức năng tìm kiếm nâng cao	109
Medit Link > Workflow	
Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca	110

Tạo ca	110
Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)	110
Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)	111
Chỉnh sửa ca	111
Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)	111
Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)	112
Sao chép ca	113
Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)	113
Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)	113
Xóa ca	114
Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)	114
Thông tin mẫu	115
Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box	115
Nhập vào Tab Mẫu	115
Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box	115
Nhập vào Tab Mẫu	115
Nối răng thành cầu	115
Cài đặt tùy chọn quét	116
Medit Scan for Labs	116
Tùy chọn chung	116
Tùy chọn theo răng	116
Thêm vào yêu thích	117
Thêm vào yêu thích	117
Quản lý mẫu yêu thích	117
Thực hiện quét/CAD	118
Quy trình quét	118
Quy trình CAD	118
Sử dụng ứng dụng hỗ trợ	118
Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ	118
Quản lý trình khởi chạy ứng dụng	118
Trình khởi chạy nhanh	119
Tắt cả ứng dụng	119
Nhận tệp kết quả	120
Xuất tệp kết quả quét	120
Xuất tệp kết quả từ danh sách ca	121
Xuất tệp kết quả từ File Viewer	123
Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu	125
Xuất danh sách ca dưới dạng CSV	128
Xuất đường viền dấu	129
Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc	129
Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp	130
Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Đơn hàng/Quản lý đơn hàng	134
Đặt hàng ca	134
Xác nhận đơn hàng (In Box)	135
Hủy đơn hàng (Order Box)	135
Từ chối đơn hàng (In Box)	135
Kiểm tra ca đã đặt hàng	135
Nhập thông tin vận chuyển (In Box)	136
Quản lý ngày giao hàng	136

Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)	136
Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)	137
Hoàn tất ca	138
Hoàn thành (Work Box/In Box)	138
Hoàn tất ca từ thông tin chi tiết ca	138
Hoàn tất nhiều ca từ danh sách ca	139
Hoàn thành (Case Box/Order Box)	139
Hoàn tất ca chưa đặt hàng trong Case Box	139
Giao tiếp bằng tag	141
Thêm tag khi tạo một ca mới	141
Thêm tag khi đặt hàng	142
Kiểm tra tag để biết chi tiết ca	142

Giới thiệu

Medit Link

Medit Link là công cụ cộng tác được thiết kế để thúc đẩy giao tiếp giữa các phòng khám và phòng lab nhằm cung cấp quy trình làm việc tối ưu cho mỗi bên.

Medit Link cung cấp các tính năng khác nhau dựa trên loại và quyền của từng tài khoản. Chương trình cung cấp giao diện người dùng rất thân thiện để quản lý quy trình làm việc, từ quét bằng máy quét miệng và máy quét mô hình, đặt hàng ca cho đến thiết kế và sản xuất bộ phận giả.

Medit Link bao gồm một dịch vụ web và một ứng dụng máy tính.

Tổng quan về dịch vụ

		Web	Ứng dụng
		• Đăng ký và quản lý tài khoản • Tìm kiếm và quản lý đối tác • Chi sẻ ca qua Web Viewer với liên kết chia sẻ • Truy cập vào ca do Ứng dụng tạo • Quản lý đơn hàng	• Nhập thông tin mẫu • Quét • Quản lý đơn hàng • Liên kết với CAD • Quản lý bệnh nhân
Phòng khám	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng khám cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét, đặt hàng và quản lý bệnh nhân. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Thành viên	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Phòng lab	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng lab cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét và quản lý đơn hàng. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Thành viên	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Dịch vụ đám mây

Medit Link hỗ trợ tự động tải lên/tải xuống cơ sở dữ liệu và tệp thông qua AWS (Amazon Web Services).

Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây sẽ tự động đồng bộ hóa với máy tính của nhiều người dùng trong tổ chức để họ có thể truy cập vào cùng một dữ liệu từ mọi máy tính vào mọi lúc. Tính năng sao lưu và khôi phục dựa trên đám mây giúp bảo vệ tất cả dữ liệu. Tính năng này giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả trong trường hợp mất dữ liệu do máy tính bị lỗi đột ngột.

Dịch vụ đám mây cho phép nha sĩ và phòng lab đối tác nhanh chóng chia sẻ dữ liệu mà không phải đối mặt với những rắc rối khi gửi email hoặc chuyển bản quét theo cách thủ công. Tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin bệnh nhân, đều được mã hóa, lưu trữ và truyền đi một cách an toàn. Medit tuân thủ theo luật và quy định y tế như HIPAA và GDPR.

Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng

Medit Link cung cấp hệ thống đặt hàng riêng.

- Medit Link cho phép người dùng thiết lập quan hệ đối tác giữa nha sĩ và phòng lab nha khoa cũng như chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
- Bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái đặt hàng.

Yêu cầu hệ thống

Lưu ý

Vui lòng tham khảo yêu cầu hệ thống của Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs nếu bạn muốn sử dụng phần mềm quét với máy quét của mình.

Yêu cầu hệ thống đối với Windows

	Máy tính xách tay & Máy tính bàn
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz hoặc cao hơn
RAM	16 GB trở lên
Đồ họa	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) hoặc cao hơn / hoặc card màn hình AMD tương đương
HĐH	Windows 10 64 Bit (không hỗ trợ 32 Bit) hoặc cao hơn

Yêu cầu hệ thống đối với macOS

	Mac
Bộ xử lý	M1 8-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core
RAM	16 GB trở lên
HĐH	Monterey 12 trở lên

Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web

Đề xuất cho trình duyệt

	Trình duyệt
Máy tính	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Tối thiểu đối với thiết bị di động

	Android	iOS
Thiết bị	Galaxy S7 tương đương hoặc cao hơn	iPhone 7 tương đương hoặc cao hơn
HĐH	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB trở lên	2 GB trở lên
AP	Snapdragon 710 trở lên	A10 Fusion


Cài đặt trên Windows

Medit Link được cài đặt trọn gói cùng các chương trình thu thập dữ liệu quét - Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs.


1. Chạy Medit_LinkSetup.exe.
2. Chọn ngôn ngữ để cài đặt.
3. Chọn thư mục để cài đặt Medit Link. Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của giấy phép rồi nhấp vào "CÀI ĐẶT".

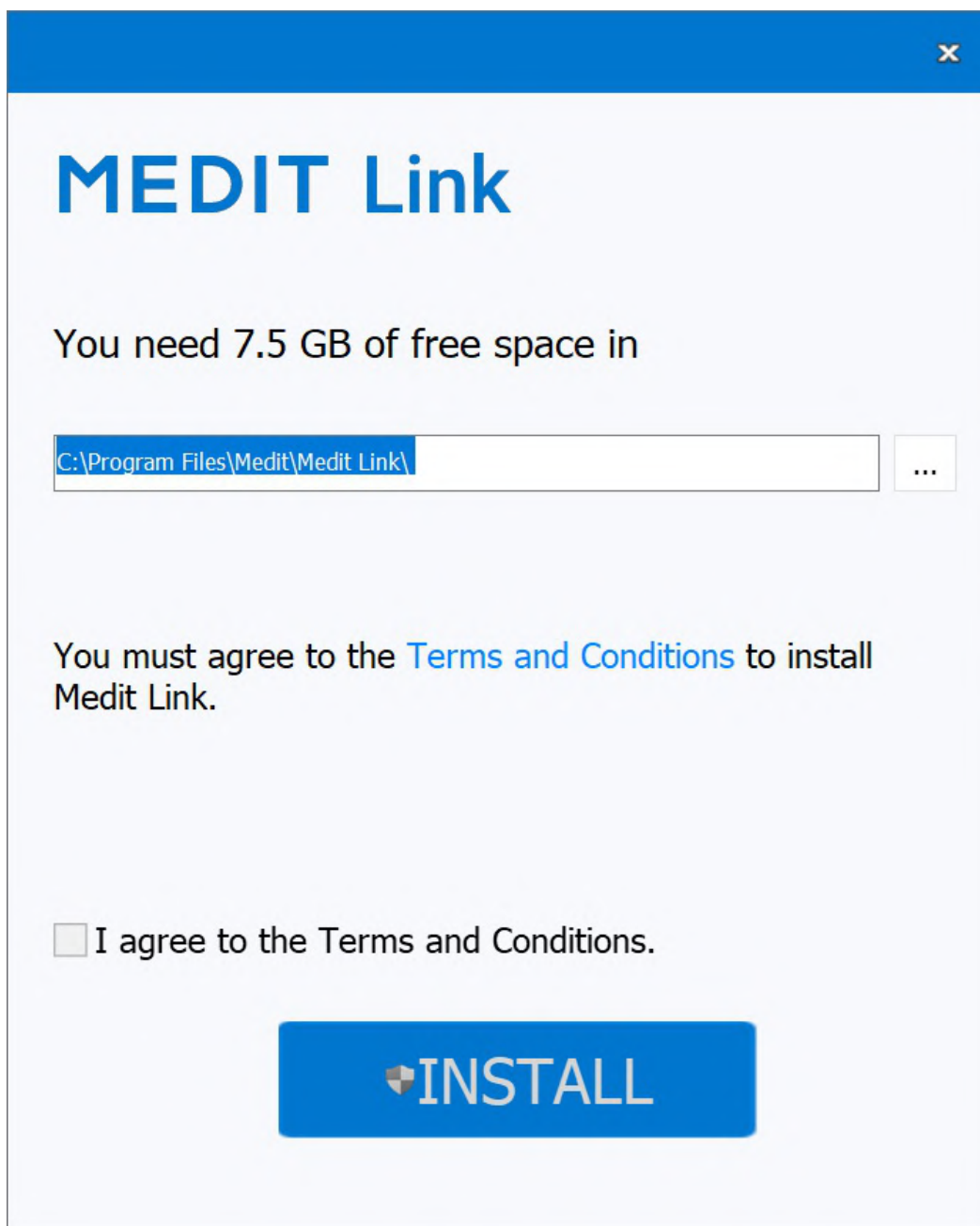

4. Đảm bảo ngắt kết nối cáp máy quét khỏi máy tính trước khi sang bước tiếp theo. Nếu máy quét vẫn đang kết nối với máy tính của bạn, quá trình cài đặt có thể không tiến hành được.
5. Chương trình sẽ được cài đặt tự động và có thể mất vài phút. Không tắt hoặc ngắt nguồn máy tính cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

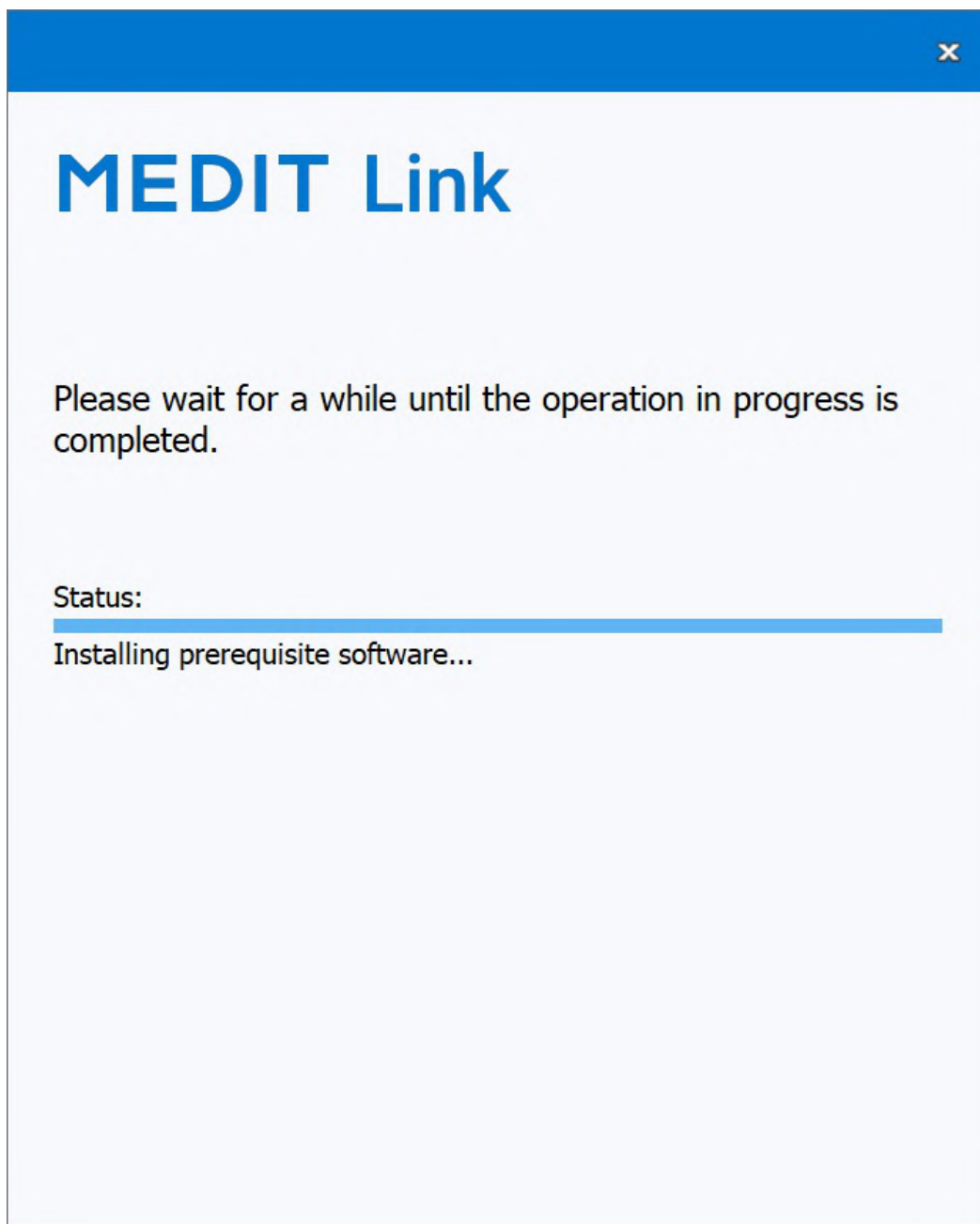

6. Vui lòng khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất cài đặt. Bạn có thể tiếp tục mà không cần khởi động lại máy tính nếu bạn không có máy quét.

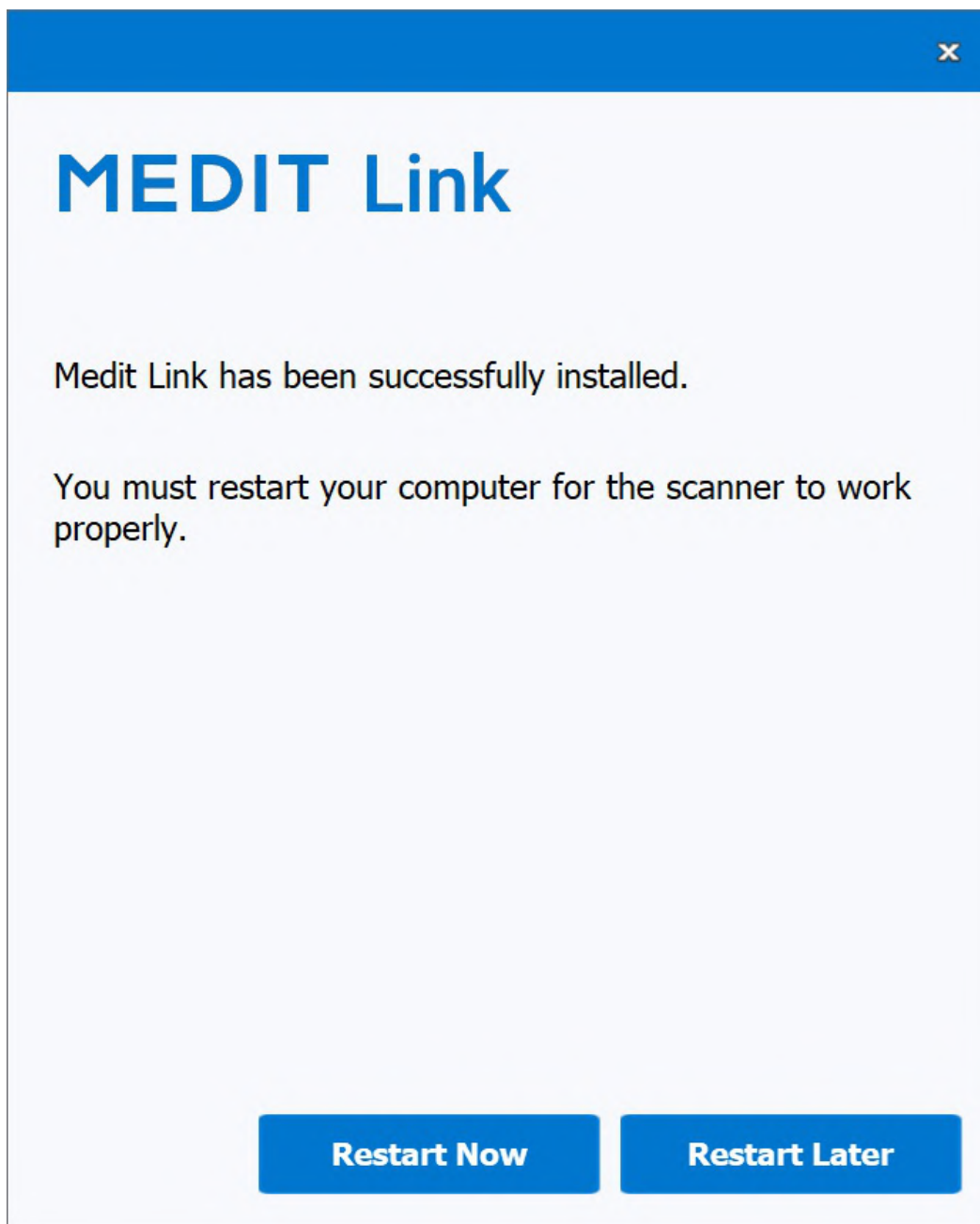


Lưu ý

Nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất, máy quét có thể không hoạt động bình thường được.


Cài đặt trên macOS

Medit Link được cài đặt cùng với Medit Scan for Clinics trong một gói.


1. Chạy Medit_Link_x.x.x.pkg và nhấp vào "Tiếp tục".

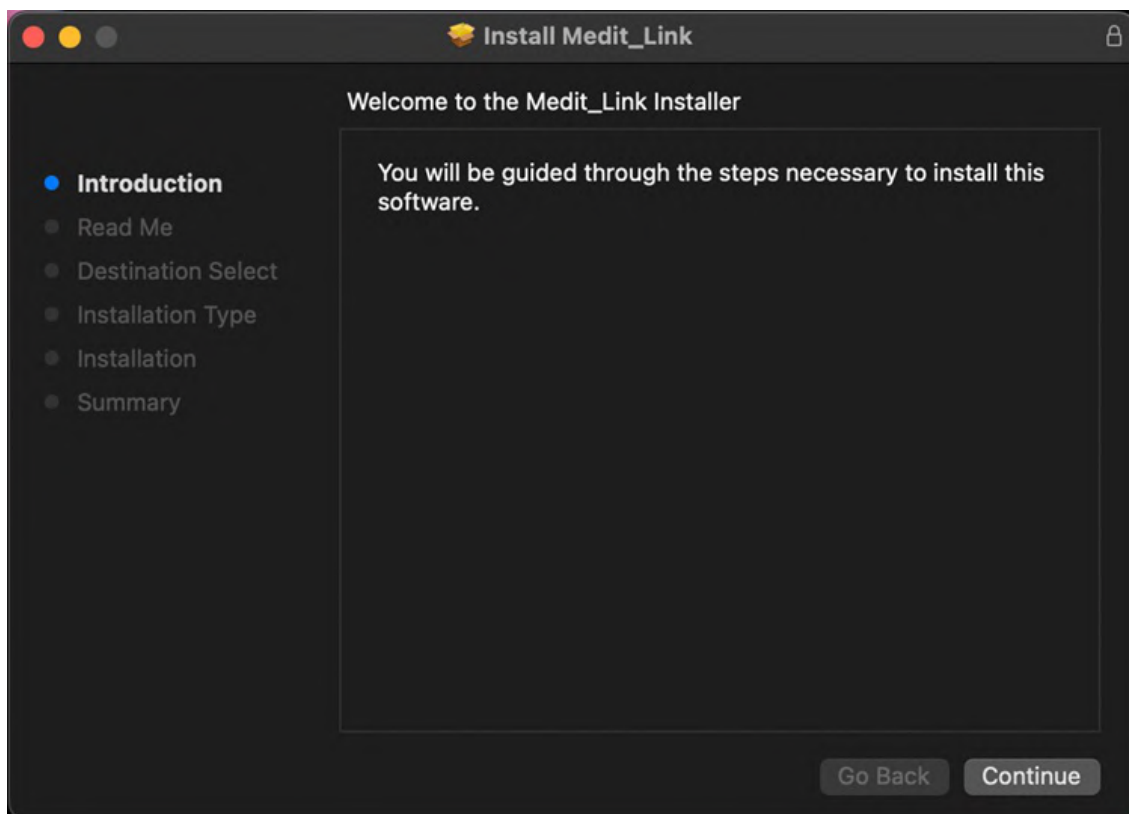


2. Đọc Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và nhấp vào "Tiếp tục".

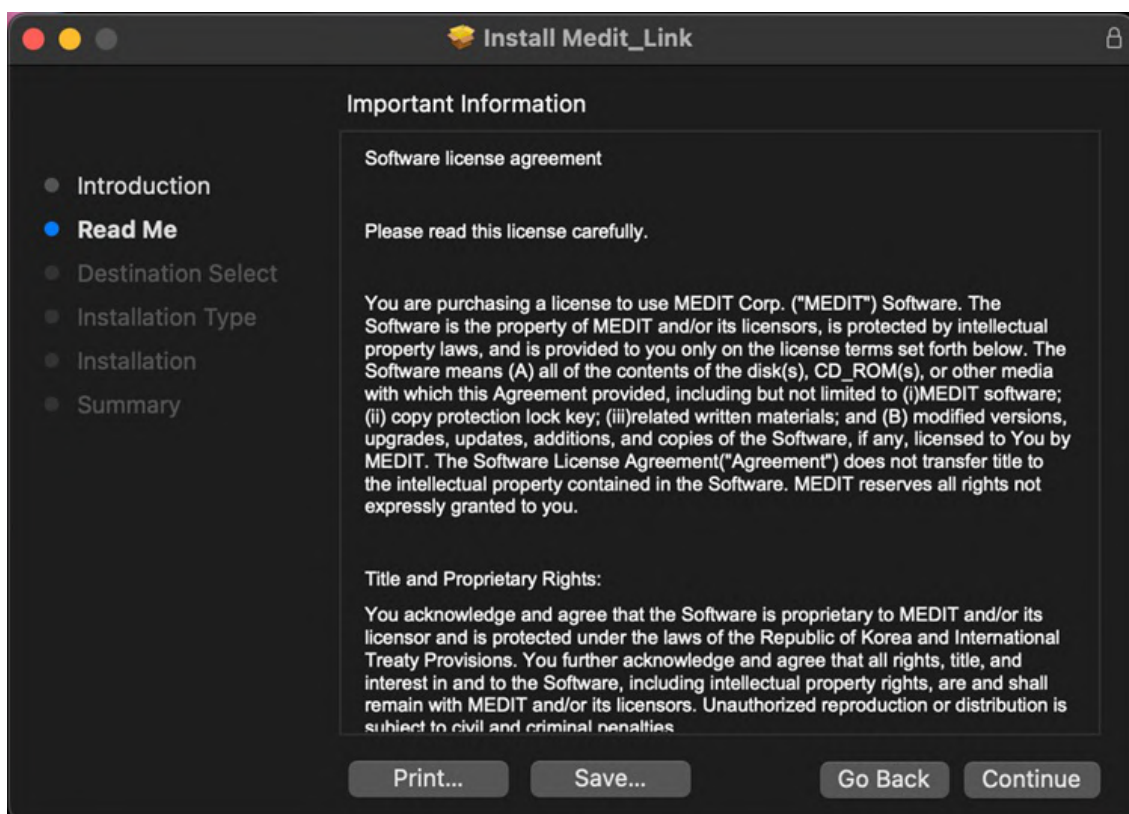

3. Chọn ổ đĩa để cài đặt và nhấn vào "Tiếp tục".

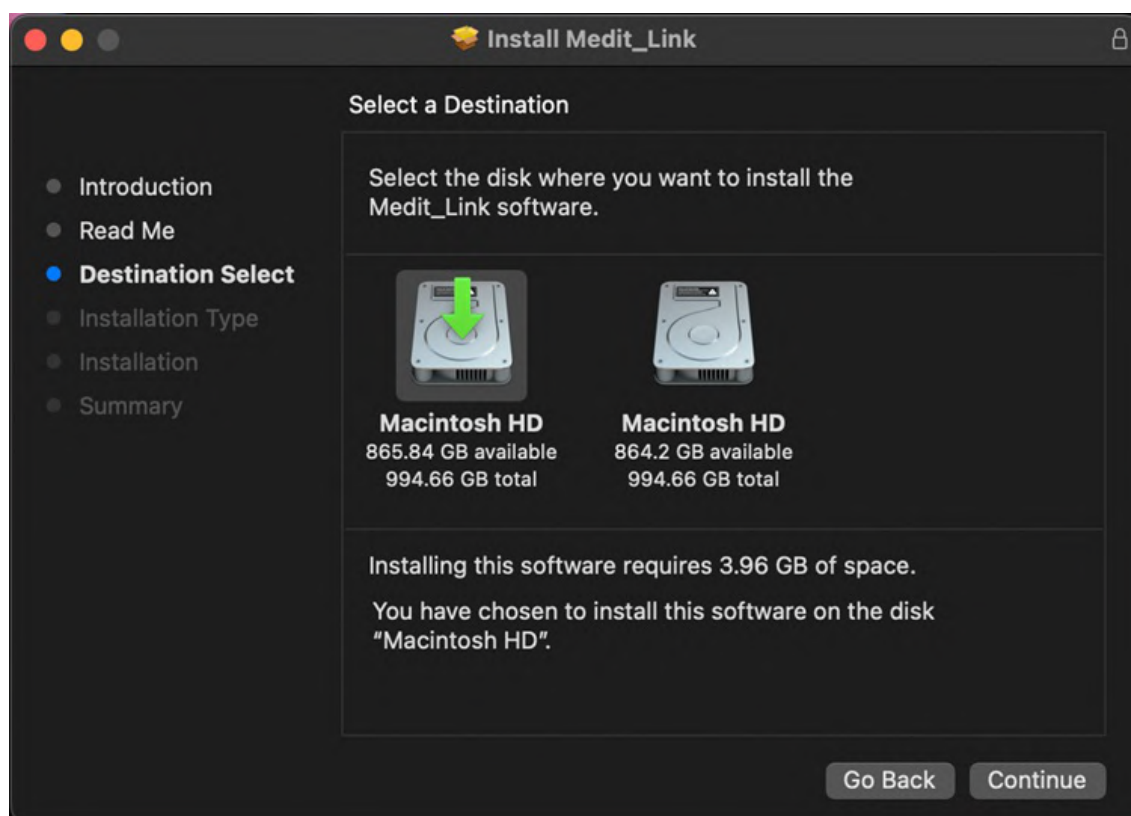


4. Nhấn vào "Thay đổi vị trí cài đặt..." để thay đổi đích cài đặt.

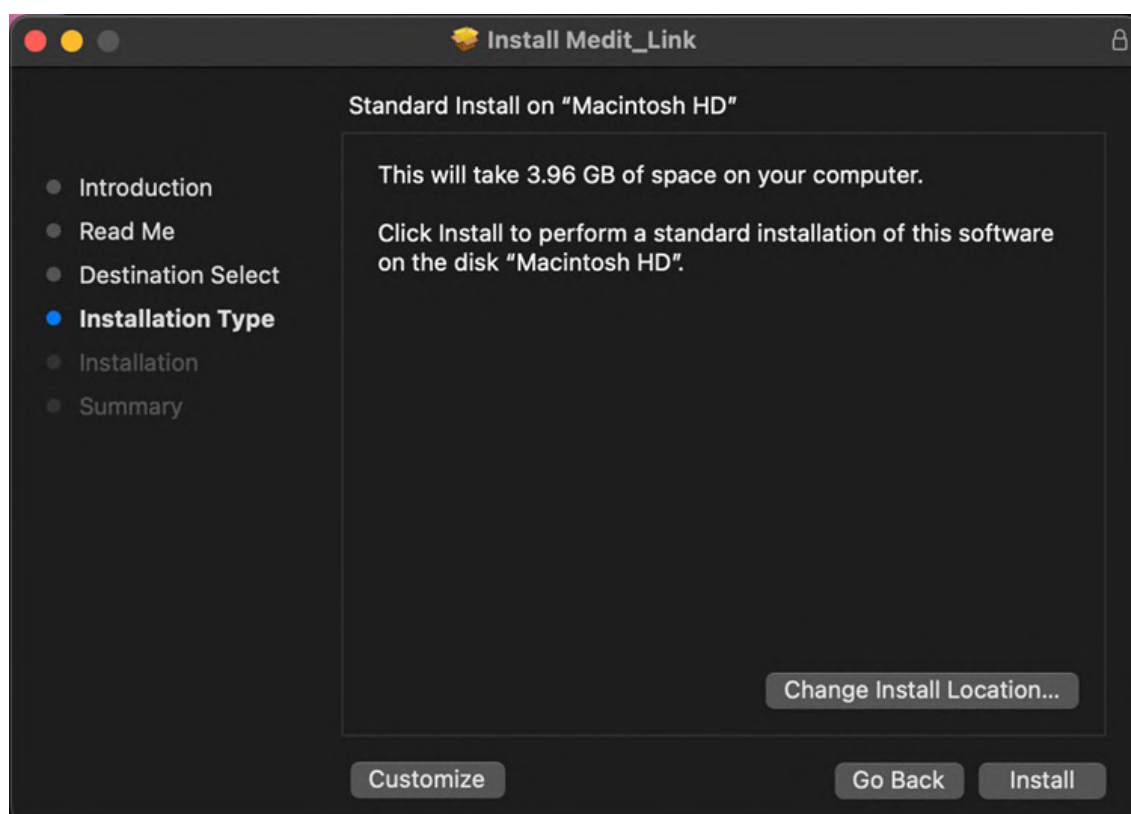


5. Nhấn vào "Cài đặt" và nhập mật khẩu máy Mac của bạn để cho phép cài đặt nếu được yêu cầu.



6. Đợi đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

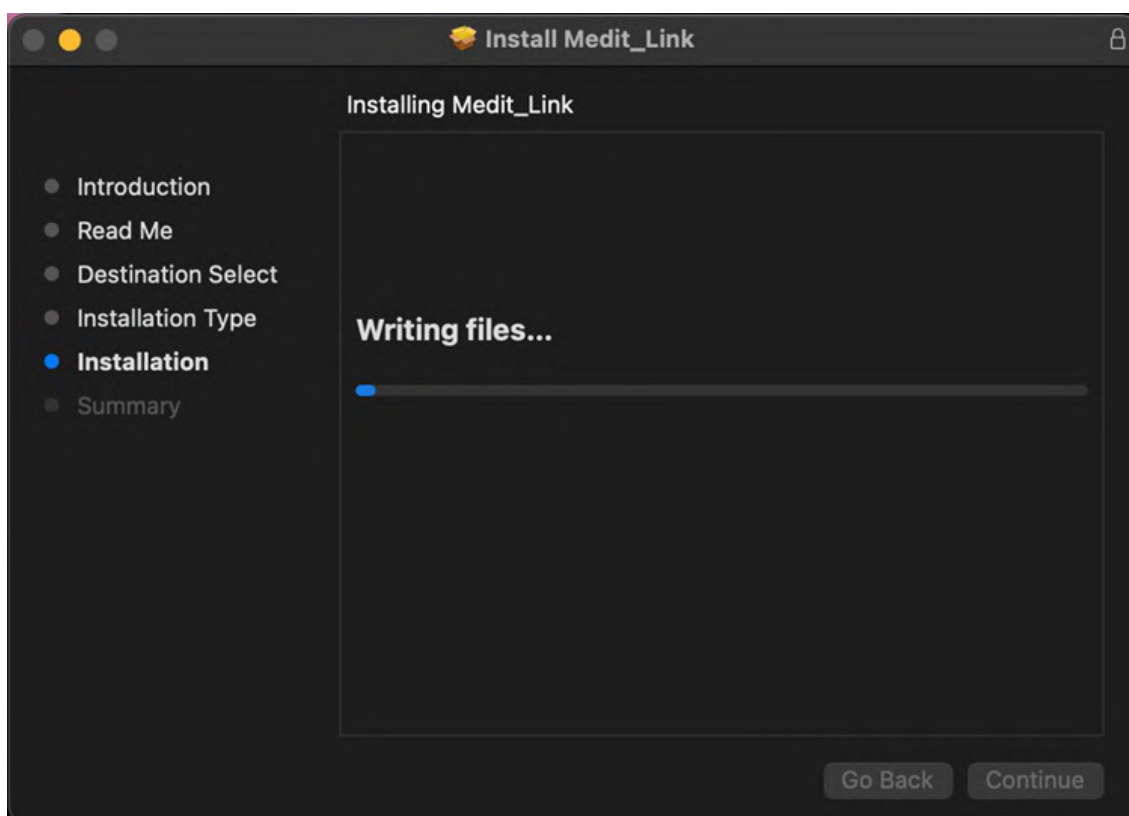


7. Nhấp vào "Đóng" để thoát khỏi cửa sổ cài đặt.

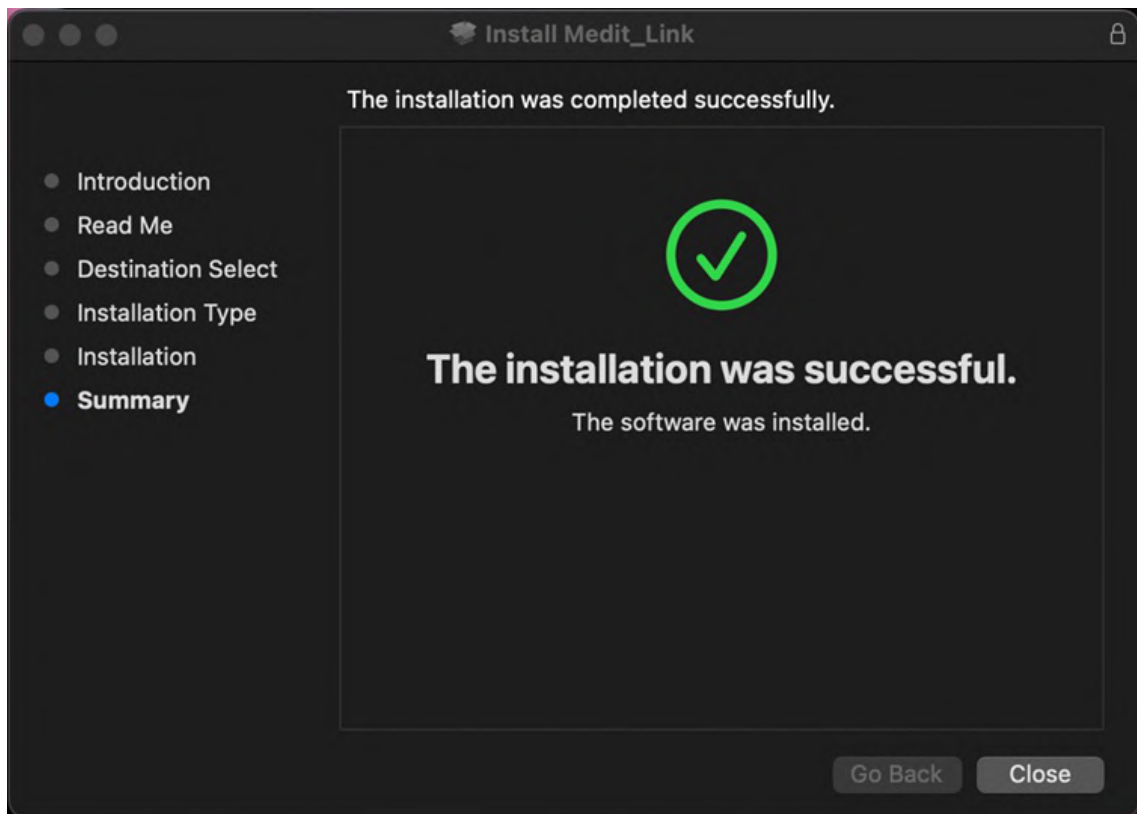

Đăng ký & Đăng nhập

Trang web Medit Link

Đăng ký dịch vụ Medit Link tại www.meditlink.com.

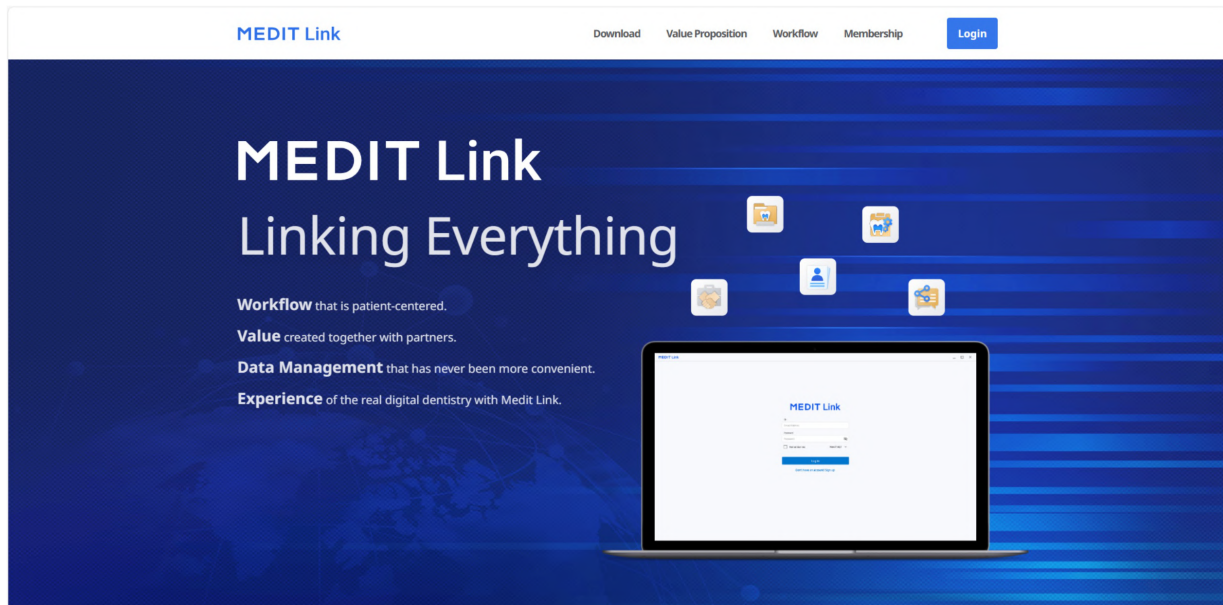

Đăng ký Medit Link China tại www.meditlink.cn.

Đăng ký

Bạn cần đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ Medit Link. Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Medit Link sau khi tạo tài khoản phòng khám hoặc phòng lab.

Người dùng có thể chọn một trong bốn loại tài khoản sau để đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ. Tùy vào loại tài khoản mà người dùng có các tính năng và đặc quyền đầy đủ hoặc bị hạn chế.

- Phòng khám - Quản trị viên
- Phòng khám - Thành viên
- Phòng lab - Quản trị viên
- Phòng lab - Thành viên

Quản trị viên thường là người đại diện cho tổ chức và có toàn quyền truy cập tất cả các chức năng và dịch vụ của Medit Link. Trái lại, tài khoản thành viên bị hạn chế quyền truy cập.

Để đăng ký thành viên, hãy thực hiện như sau:

1. Nhấp vào "Chưa có tài khoản? Đăng ký." trên trang đăng nhập.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Sau khi đọc mô tả, hãy nhấp vào nút "Đăng ký" loại tài khoản bạn mong muốn.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

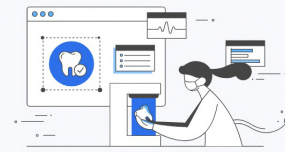

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Mẫu đăng ký sau xuất hiện.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. Nhập tên phòng khám hoặc phòng lab, sau đó, tùy vào loại tài khoản bạn mong muốn, hãy thực hiện như sau:

- Nếu bạn đăng ký với tư cách quản trị viên, hãy nhấp vào "Kiểm tra khả năng sử dụng" để xem tên đã nhập có sẵn không.
- Nếu bạn đăng ký với tư cách thành viên, hãy nhấp vào "Tìm kiếm". Bạn chỉ có thể đăng ký sau khi quản trị viên đã đăng ký tổ chức của bạn.

5. Điền những thông tin còn lại của mẫu đăng ký và nhấp vào "Đăng ký".

Lưu ý

Nếu trong quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị thì bạn sẽ nhận được thông tin hữu ích về sản phẩm và dịch vụ từ Medit.

6. Một email xác minh sẽ được gửi cho bạn.

7. Để hoàn tất quá trình đăng ký, hãy xác minh địa chỉ email bằng liên kết bạn nhận được.

Trang đăng nhập và chào mừng

1. Nhập địa chỉ email và mật khẩu trên trang đăng nhập và nhấp vào "Đăng nhập".

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Cửa sổ bật lên sau sẽ xuất hiện nếu bạn chưa điền thông tin doanh nghiệp.

Welcome, stage-test-wh!

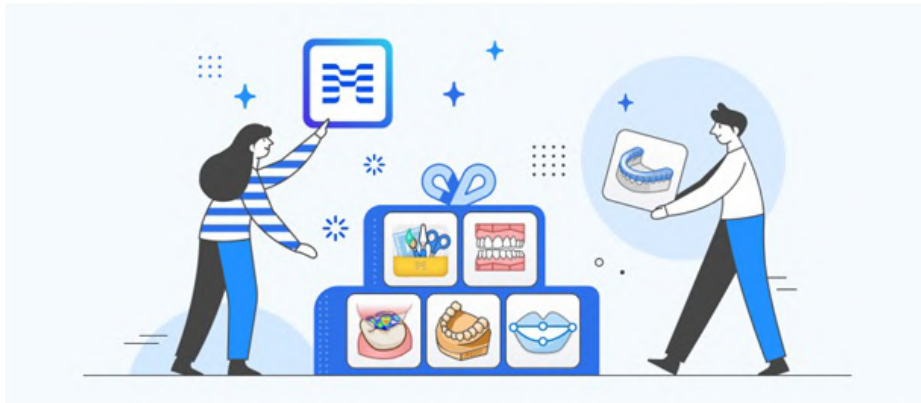

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Lưu ý


Để sử dụng các dịch vụ Medit Link, quản trị viên của bạn phải nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab.

3. Nhấp vào nút "Truy cập Phòng khám của tôi" hoặc "Truy cập Phòng lab của tôi" và nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab, bao gồm tên doanh nghiệp, ảnh đại diện/logo, dịch vụ bạn cung cấp, địa chỉ văn phòng, số văn phòng, v.v.
4. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập trên trang chào mừng bất cứ lúc nào trên tab My Info> Phòng khám của tôi hoặc Phòng lab của tôi trong Medit Link Web.

Dashboard

Tổng quan về Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

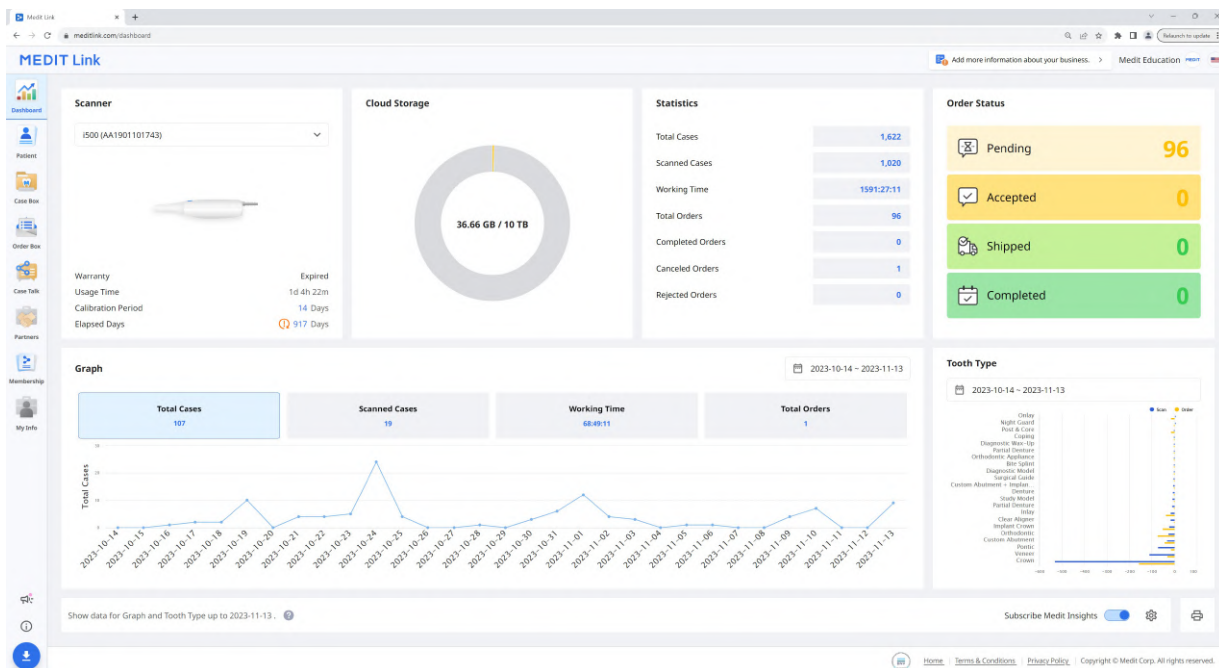

Đồ thị và biểu đồ trong phần dashboard hiển thị số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trong Medit Link.

Máy quét	Cung cấp thông tin về các máy quét đang hoạt động, bao gồm bảo hành, thời gian sử dụng máy quét, chu kỳ hiệu chuẩn và thời gian hiệu chuẩn đã trôi qua.
Bộ nhớ đám mây	Hiển thị tổng dung lượng của đám mây và dung lượng đã sử dụng.
Thống kê	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái công việc.
Trạng thái đơn hàng	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái đơn hàng.
Đồ thị	Vẽ đồ thị thông tin công việc theo thời gian.
Loại răng	Cung cấp số liệu thống kê về số lần quét và số lượng đơn hàng theo thông tin điều trị.


Medit Insights

Medit Insights là dịch vụ báo cáo giúp bạn phân tích số liệu thống kê về hoạt động sử dụng.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Medit Insights

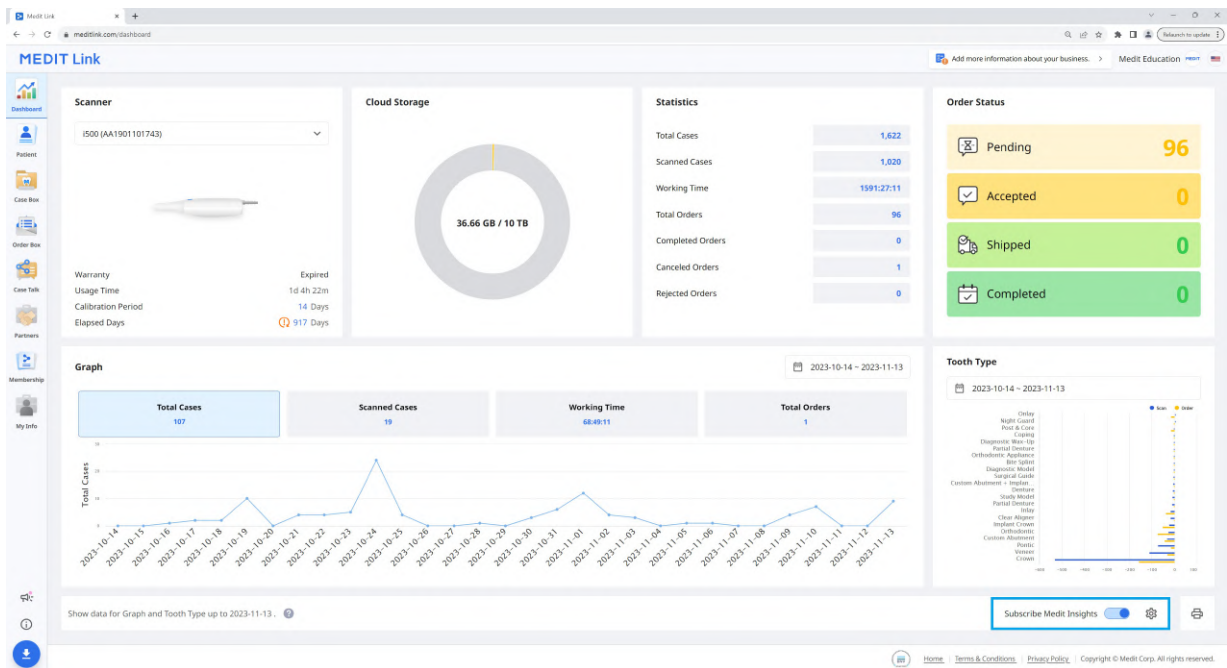

Đăng ký Medit Insights

Bạn có thể nhận được email báo cáo vào ngày thứ hai hàng tháng. Không cần thực hiện quy trình đăng ký bổ sung. Chỉ cần bật "Đăng ký Medit Insights".

Nếu bạn không sử dụng địa chỉ email bạn đã dùng cho tài khoản Medit Link, bạn có thể đặt một địa chỉ email khác để nhận Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Vào ngày thứ hai hàng tháng, bạn sẽ nhận được email chứa số liệu thống kê như hình bên dưới.

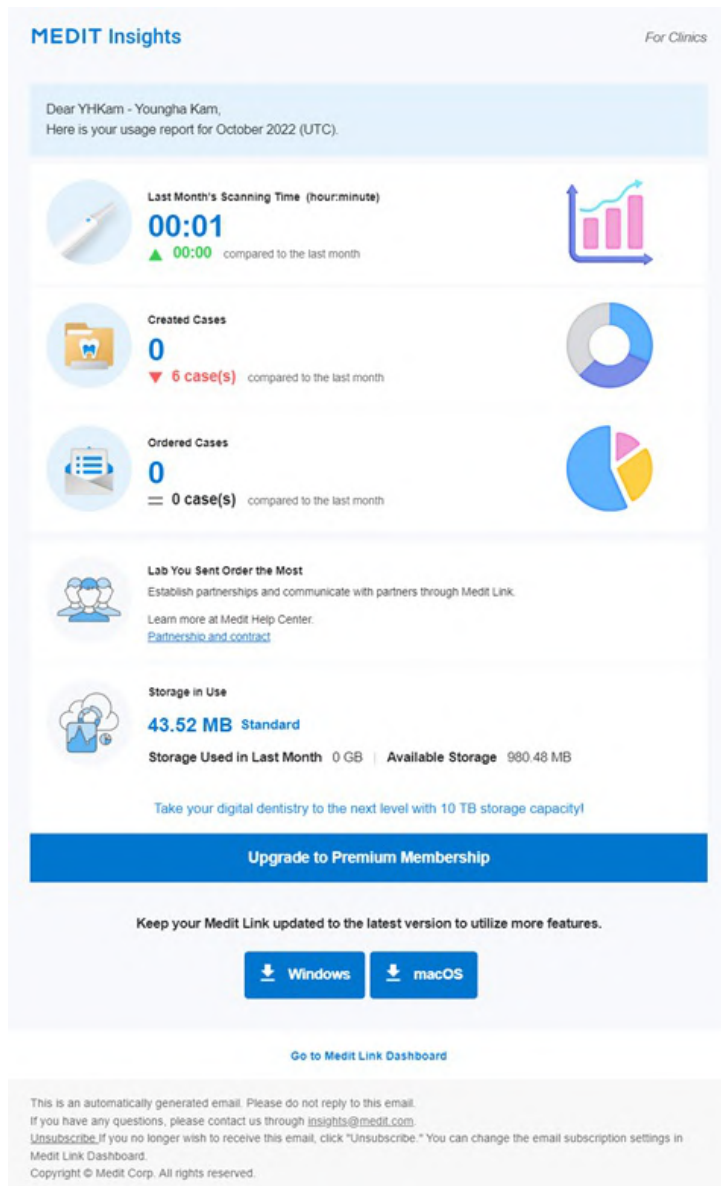

Biểu ngữ	Medit cung cấp các mẹo và thông tin hữu ích tại đây. * Nếu bạn không muốn xem biểu ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thỏa thuận marketing và khuyến mại trong My Info > Tài khoản của tôi.
Thông tin thống kê	Thông tin về số liệu thống kê được hiển thị, chẳng hạn như thời gian quét, ca đã tạo, phòng lab được đặt hàng nhiều nhất, v.v.
Tải xuống Medit Link	Nút này cung cấp liên kết tải xuống Medit Link.
Dashboard	Tất cả thông tin thống kê đều dựa trên thông tin tại Dashboard. Bạn có thể xem thêm chi tiết trong Dashboard.

Hủy đăng ký Medit Insights

Tắt "Đăng ký Medit Insights" trong Dashboard hoặc nhấp vào "Hủy đăng ký" trong email bạn nhận được.

Patient

Bạn có thể quản lý ca dựa theo tên bệnh nhân và ID bệnh nhân.

Tất cả bệnh nhân đã đăng ký qua ứng dụng Medit Link đều được hiển thị trong danh sách, giúp quản lý bệnh nhân và ca của họ dễ dàng hơn.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hk.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Tìm kiếm bệnh nhân

1. Chọn tiêu chí tìm kiếm là Tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân từ menu thả xuống ở phía trên cùng bên phải danh sách bệnh nhân.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Nhập tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân để tìm kiếm theo tiêu chí tìm kiếm đã chọn.
3. Danh sách chỉ hiển thị những bệnh nhân có tên hoặc ID bệnh nhân đã nhập.

Case Box/Work Box

Case Box (Phòng khám) hoặc Work Box (Phòng lab) hiển thị tất cả các ca do người dùng tạo trên ứng dụng Medit Link. Bạn có thể xem tệp qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng biệt.

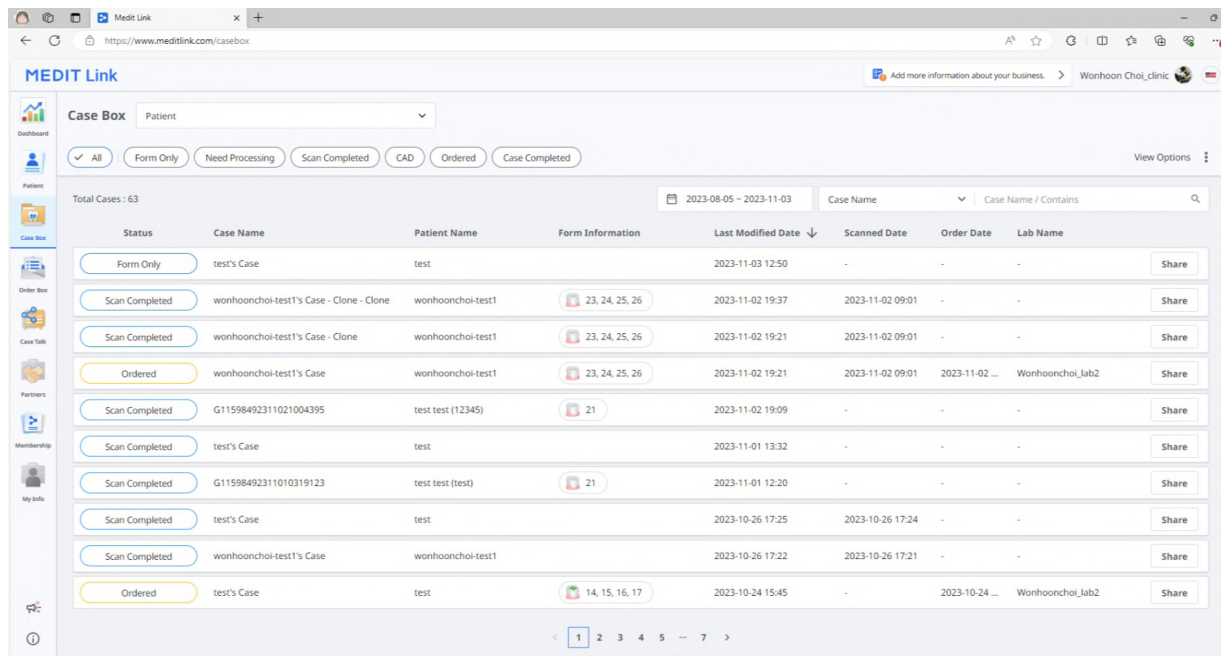


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a search bar with 'Patient' entered. Below it, a row of filter buttons includes 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table lists several cases, including 'test's Case' and 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone'. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Lọc ca

Lọc theo bệnh nhân

Bạn có thể lọc các ca theo bệnh nhân. Tính năng này hữu ích khi bạn tìm các ca cho bệnh nhân cụ thể.

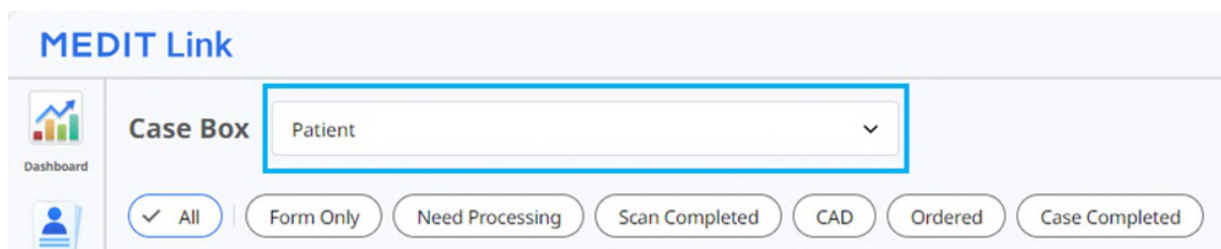

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' label is on the left. To its right is a dropdown menu currently showing 'Patient'. Below this, there is a row of filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' button is highlighted with a blue border.

1. Nhập tên bệnh nhân vào trường tìm kiếm.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Chọn bệnh nhân từ danh sách kết quả tìm kiếm.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trong danh sách, giúp bạn dễ tìm được những ca cần xử lý hơn.

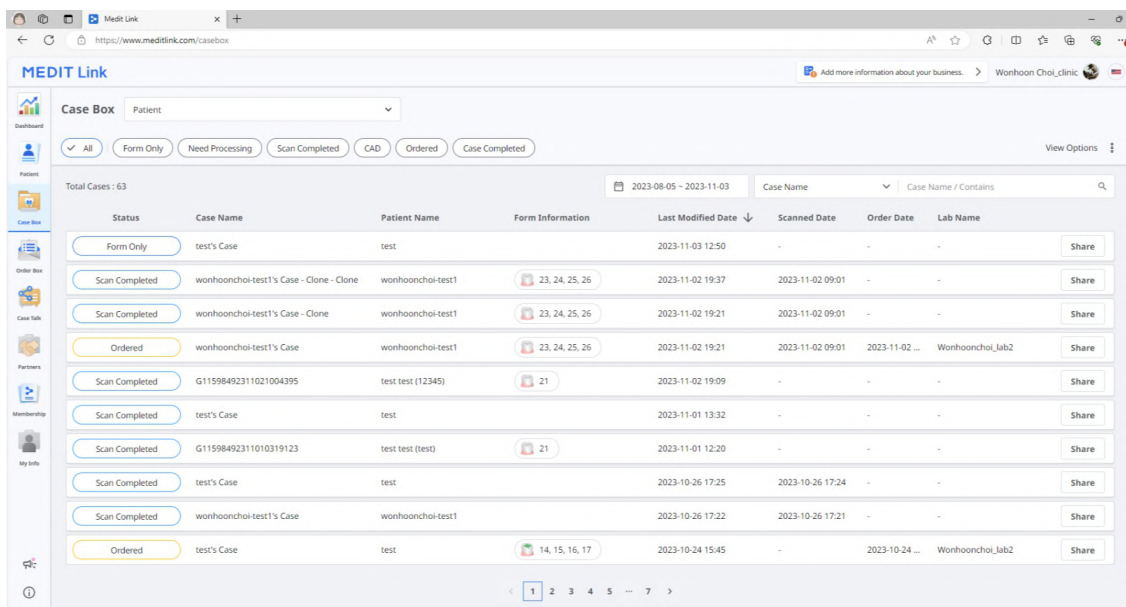

Lọc theo trạng thái

Bạn có thể lọc các ca dựa theo trạng thái.

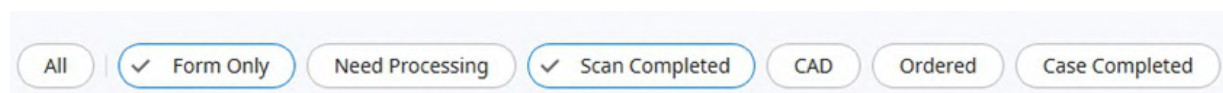

- Người dùng có thể nhấp vào trạng thái họ muốn xem. Trình duyệt sẽ chỉ hiển thị các ca có trạng thái đã chọn.
- Người dùng có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Các loại trạng thái sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Phòng lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Lọc theo khoảng thời gian

Bạn có thể lọc và hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.



2. Chọn phạm vi.

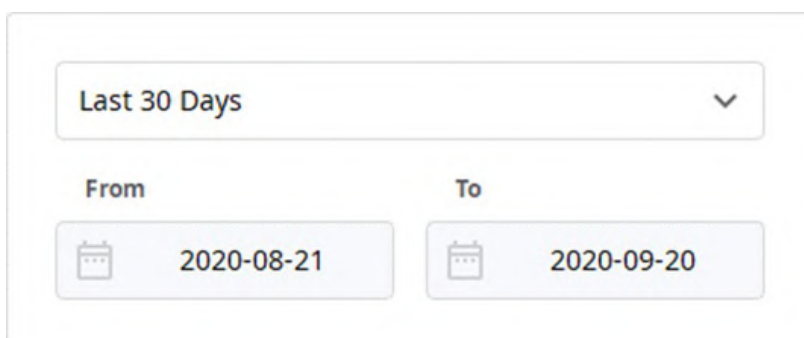

- Tất cả: Hiển thị tất cả các ca.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc để hiển thị các ca được sửa đổi trong khoảng thời gian đó.
- Hôm nay: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong hôm nay.
- Hôm qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối vào ngày hôm qua.
- 7 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 7 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- 30 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 30 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- 90 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 90 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- Tháng này: Hiển thị các ca trong tháng này.
- Tháng trước: Hiển thị các ca trong tháng trước.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Lọc theo tìm kiếm

Bạn có thể tận dụng các chức năng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Case Name 


Case Name / Contains



Các tùy chọn tìm kiếm sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab
Work Box (Phòng lab)	Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng

Chi tiết ca

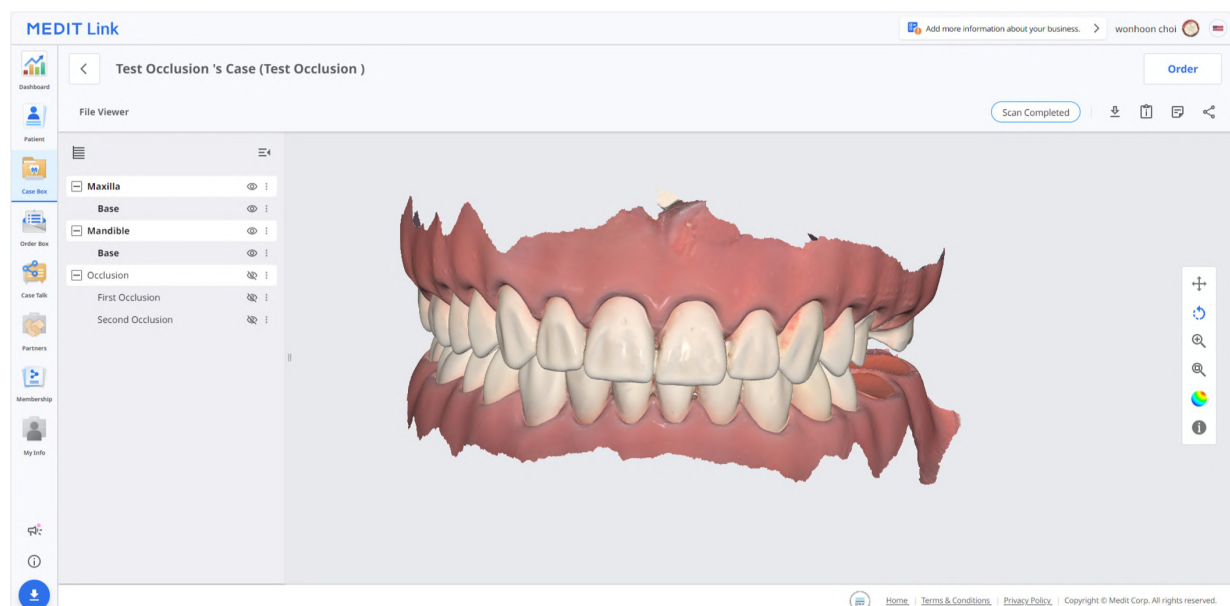

Các công cụ quản lý ca sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca	Hiển thị trạng thái của ca.
	Truy cập Order Box/In Box	Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Tải xuống	Tải tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.
	Ghi chú & Tag	Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.
	Chia sẻ	Tạo liên kết để chia sẻ. Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung.

Order Box/In Box

Order Box (Phòng khám) hoặc In Box (Phòng lab) hiển thị các ca đã đặt hàng trên ứng dụng Medit Link.

Chi tiết đơn hàng

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- | | |
|---|--|
| 1 | Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân. |
| 2 | Cung cấp các chức năng quản lý đơn hàng (chấp nhận/hủy; giao/nhận). |
| 3 | Hiển thị các tab có sẵn: Đơn hàng, File Viewer |
| 4 | Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp: trạng thái ca, phím tắt để xem thông tin chi tiết, thông tin ca, ghi chú & tag, v.v. |
| 5 | Hiển thị thông tin chi tiết cho đơn hàng, bao gồm số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên đối tác, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao và ghi chú & tag. |
| 6 | Hiển thị thông tin sản phẩm đã đặt hàng và trạng thái giao hàng. |


Tab trong Order Box/In Box

Đơn hàng	File Viewer
Kiểm tra thông tin chi tiết cho đơn hàng, chẳng hạn như ID đơn hàng, tên bệnh nhân, tên tài khoản, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao, ghi chú và tag.	Xem tệp do các hoạt động quét/CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Case Talk

Các ca tạo trong Medit Link có thể được chia sẻ với những người cụ thể do bạn chỉ định, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua "Case Talk" trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.

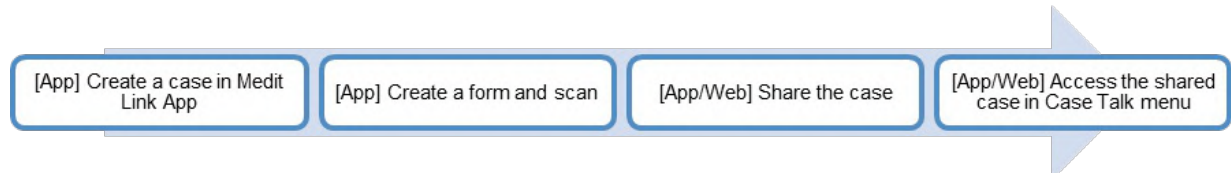


Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.


Tạo một Case Talk

Bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một ca được tạo trong Case Box/Work Box.

1. Tìm ca bạn muốn chia sẻ và nhấp vào nút "Chia sẻ" ở bên phải.

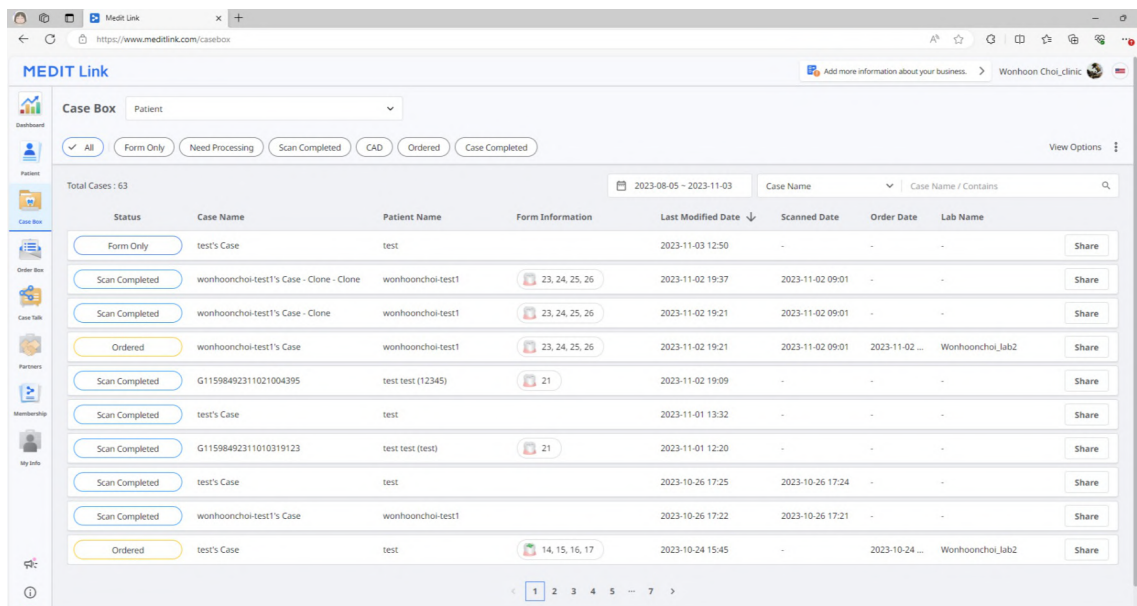

2. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.

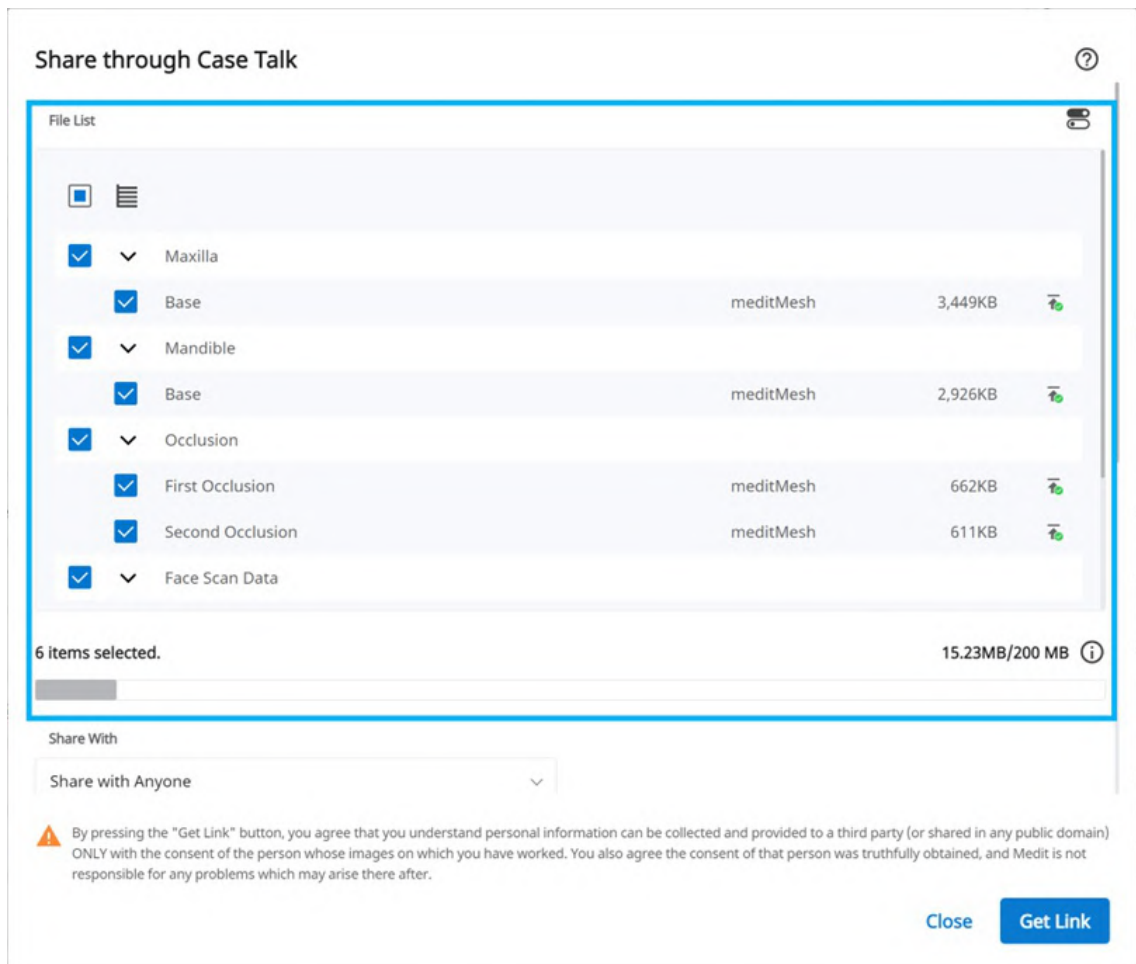

3. Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ.
4. Nhấp vào "Lấy liên kết" để tạo liên kết chia sẻ.

Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

1

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

1

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Chia sẻ với	- Chia sẻ với mọi người Tạo liên kết chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ tệp với bất cứ ai. - Chia sẻ với những người cụ thể Tạo và gửi liên kết chia sẻ tới những người cụ thể.
Chia sẻ qua	Nếu bạn chọn "Chia sẻ với những người cụ thể", bạn có thể chia sẻ liên kết với những người cụ thể theo nhiều cách khác nhau. - Địa chỉ email - Tin nhắn SMS - Partners
Ngày hết hạn	Đặt ngày hết hạn cho liên kết. Sau khi liên kết hết hạn, những người được bạn chia sẻ sẽ không còn quyền truy cập vào tệp nữa. Bạn có thể gia hạn thời gian hết hạn lên tới 90 ngày kể từ ngày hôm nay.
Mã PIN	Đặt mã truy cập gồm 6 chữ số để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Chia sẻ tên bệnh nhân	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả những người có liên kết sẽ thấy tên bệnh nhân.
Cấp quyền tải xuống	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả người dùng có liên kết đều có thể tải xuống tệp.
Cho phép bình luận	- Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ có thể giao tiếp thông qua liên kết chia sẻ. - Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này, người nhận chỉ có thể xem bình luận của bạn chứ không thể thêm bình luận.
Bình luận	Bạn có thể để lại lời nhắn trong phần bình luận.

Chi tiết Case Talk

Bạn có thể xem tệp trong ca được chia sẻ. Các chức năng sau có sẵn trên trang chi tiết Case Talk.

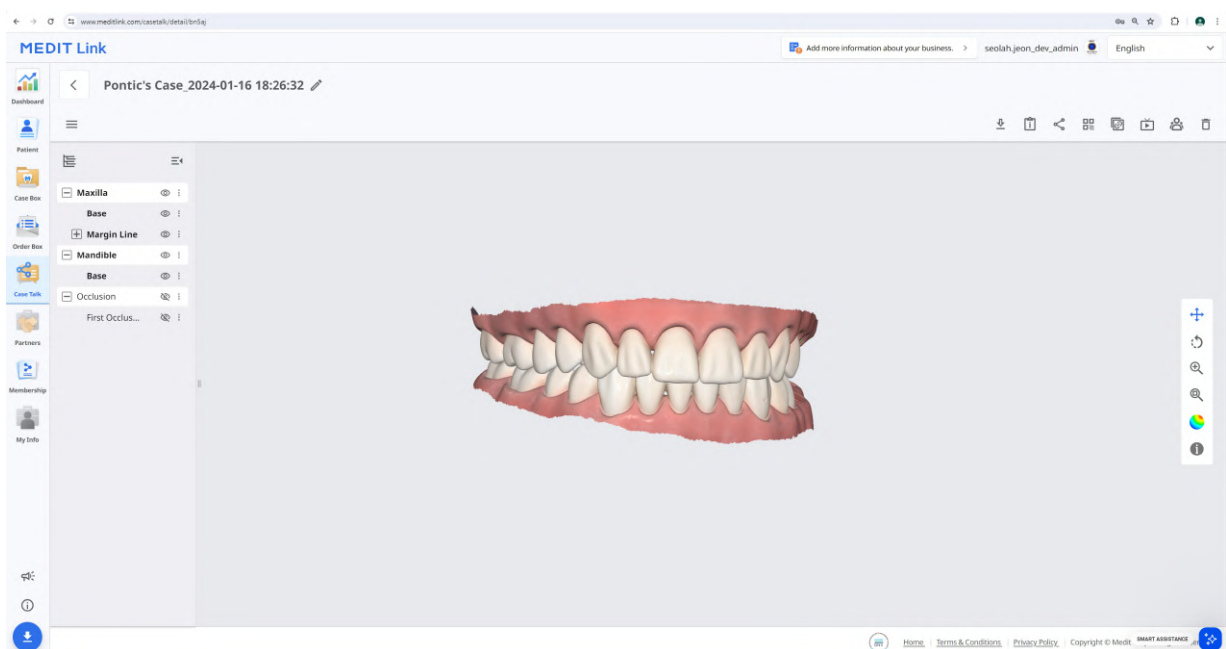

	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.
	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Chia sẻ ca với mã QR.
	Sao chép liên kết	Sao chép liên kết chia sẻ vào bộ nhớ tạm. Liên kết được sao chép hiển thị các tệp được chia sẻ trên trình duyệt web của bạn.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng đang truy cập vào liên kết chia sẻ.
	Xóa	Xóa liên kết chia sẻ. Liên kết chia sẻ đã xóa không còn truy cập được nữa.

Lưu ý


Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live
- Khách mời

Web Viewer

Bạn có thể xem dữ liệu được chia sẻ qua Case Talk trong trình duyệt web.

Bạn có thể giao tiếp với những người có quyền truy cập vào liên kết bằng chú thích và bình luận.

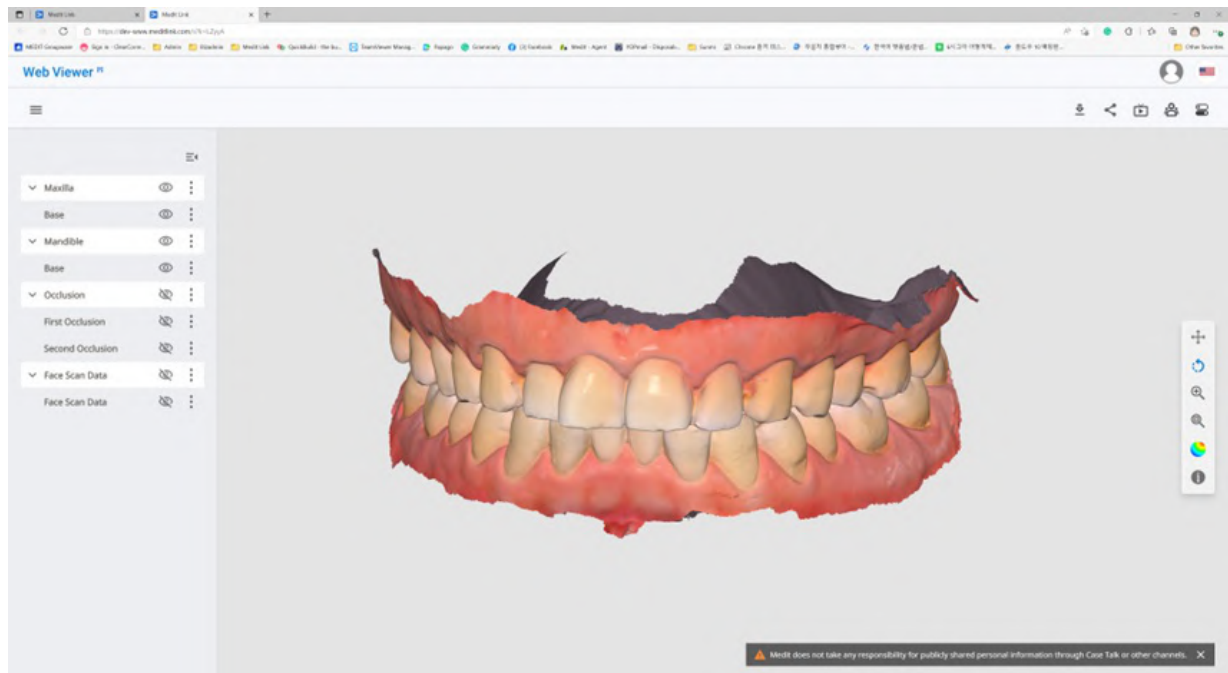

	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca này về máy tính.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.
	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Chia sẻ ca với mã QR.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ.
	Dán nhãn răng	Thay đổi hệ thống dán nhãn răng.


Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live
- Khách mời

Chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào vị trí được chỉ định trên mô hình 3D. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem chú thích do bạn thêm.

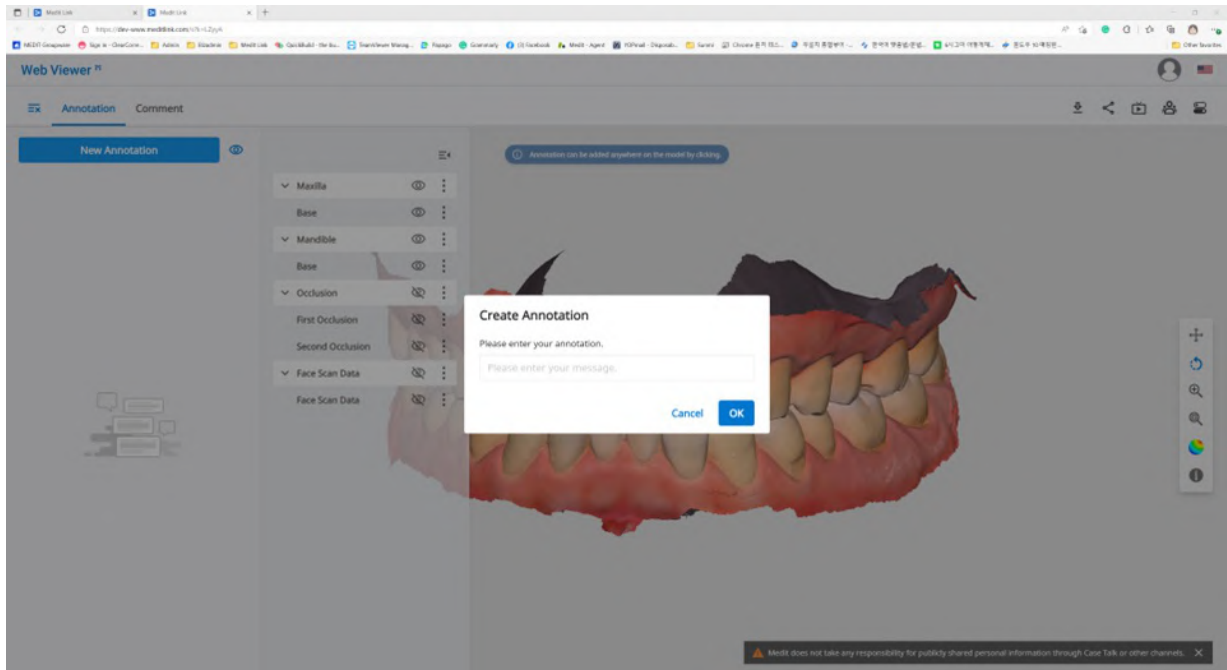


Lưu ý


Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Chú thích

1. Tìm biểu tượng menu ở góc trên cùng bên trái và chọn tab "Chú thích". Sử dụng nút "Chú thích mới" để thêm chú thích vào bất kỳ đâu trên dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.
2. Nhập tin nhắn, sau đó nhấp vào "OK" để lưu.

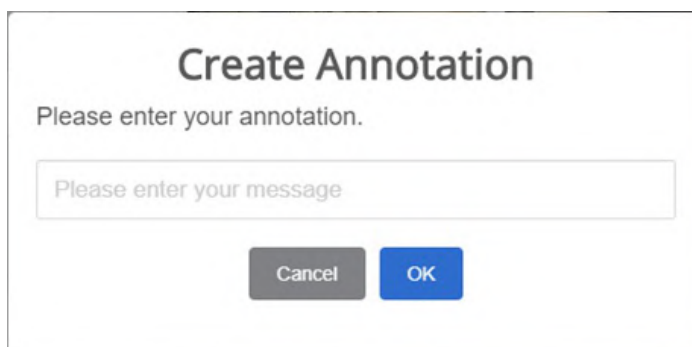A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Bạn có thể sử dụng chú thích làm kênh giao tiếp đơn giản.
Nhấp vào chú thích đã tạo để nhập phản hồi và nhấn "Gửi".

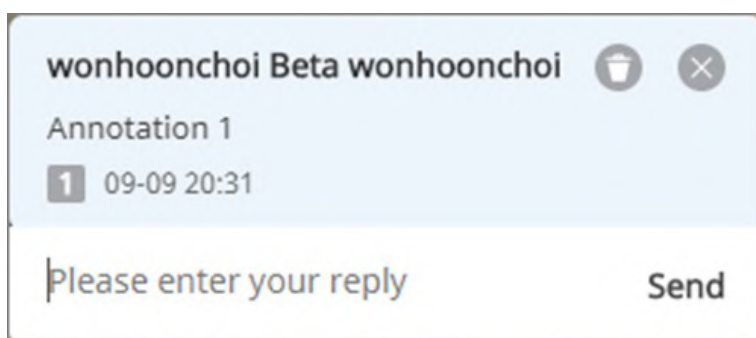A screenshot of the annotation chat interface. It shows a header with the name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and icons for deleting and closing. Below this is the title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Bình luận

Bạn có thể giao tiếp với những người dùng có quyền truy cập vào liên kết thông qua tab "Bình luận" trong menu Web Viewer.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Bình luận

Chia sẻ màn hình theo thời gian thực

Bạn có thể chia sẻ màn hình theo thời gian thực.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live

1. Nhấp vào "Live" để chia sẻ màn hình Web Viewer của bạn với người dùng được kết nối.





2. Nhấp vào "OK" để bắt đầu chia sẻ màn hình.
3. Những người khác đã truy cập liên kết phải chấp nhận chia sẻ màn hình.
4. Màn hình của người dùng bắt đầu chia sẻ màn hình được hiển thị đồng bộ với màn hình của người nhận được yêu cầu.

Cây dữ liệu


Tất cả dữ liệu được nhóm và hiển thị theo thuộc tính trong cây dữ liệu. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ, v.v.

Kiểm soát cây dữ liệu

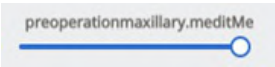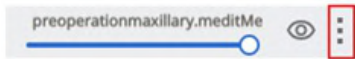Hiện/Ẩn	Nhấp vào biểu tượng 'mắt' để hiện hoặc ẩn dữ liệu khỏi chế độ hiển thị. Kiểm soát mức độ hiển thị dữ liệu dưới dạng nhóm hoặc tệp riêng lẻ.
Độ mờ	Di chuột qua thành phần hiển thị để xem thanh trượt độ mờ. Điều chỉnh thanh trượt để thay đổi độ trong suốt của dữ liệu. 
Menu mở rộng	Menu mở rộng nằm ở phía bên phải của mỗi thành phần trong Cây dữ liệu. Có các tùy chọn sau:  - Chỉ hiển thị mục này: Ẩn tất cả dữ liệu khác ngoại trừ dữ liệu hiện tại. - Ẩn: Ẩn dữ liệu hiện tại.

Điều khiển mô hình 3D

			Di chuyển	Di chuyển mô hình.
			Xoay	Xoay mô hình.
			Phóng to/thu nhỏ	Phóng to và thu nhỏ mô hình.
			Thu phóng vừa màn hình	Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
				Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện lì (Kết xuất Phong).
			Lì	
			Chế độ hiển thị dữ liệu	Xem dữ liệu ở dạng đơn sắc.
			Đơn sắc	

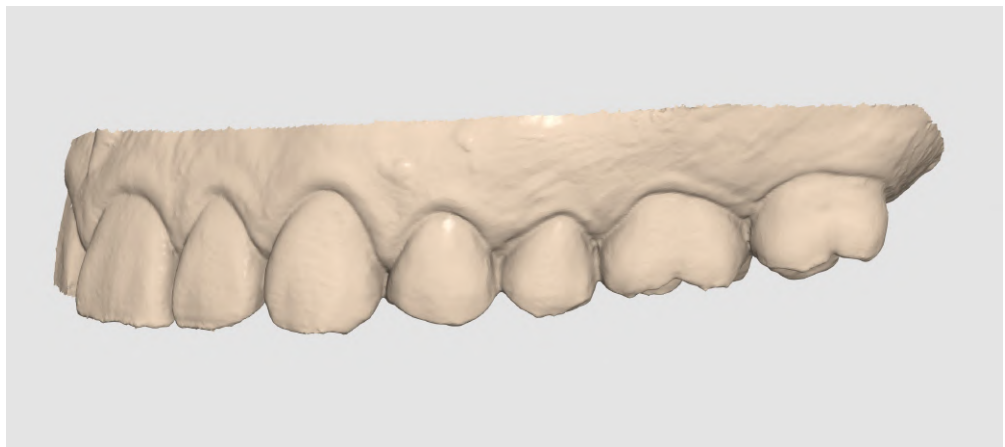

Partners

Bạn có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng để yêu cầu hợp tác và xem danh sách đối tác hiện tại.




Các dịch vụ sử dụng Google Maps không khả dụng trong Medit Link China.

Tìm kiếm đối tác


Bạn có thể tìm kiếm người dùng Medit Link dựa theo tên doanh nghiệp và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp của họ.

Trong phần kết quả tìm kiếm, bạn có thể gửi yêu cầu hợp tác đến doanh nghiệp mà bạn muốn hợp tác.

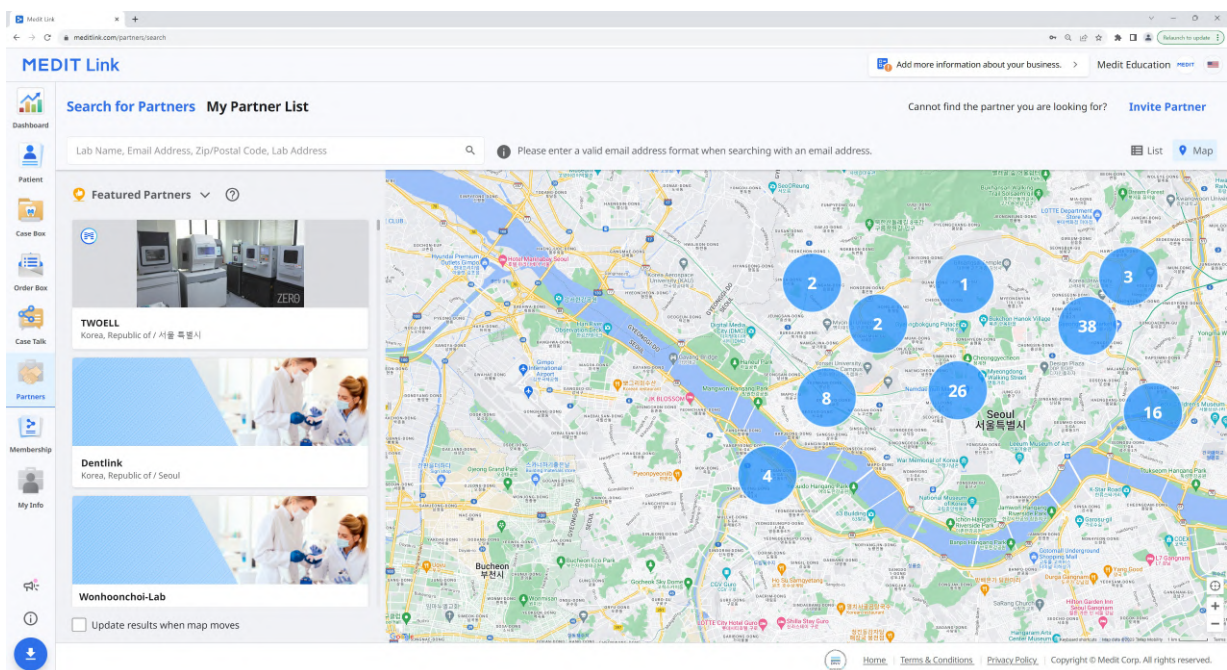

Danh sách đối tác của tôi

Bạn có thể xem lại quan hệ đối tác hiện tại với tất cả các doanh nghiệp đối tác hiện bạn có trong Danh sách đối tác của tôi.

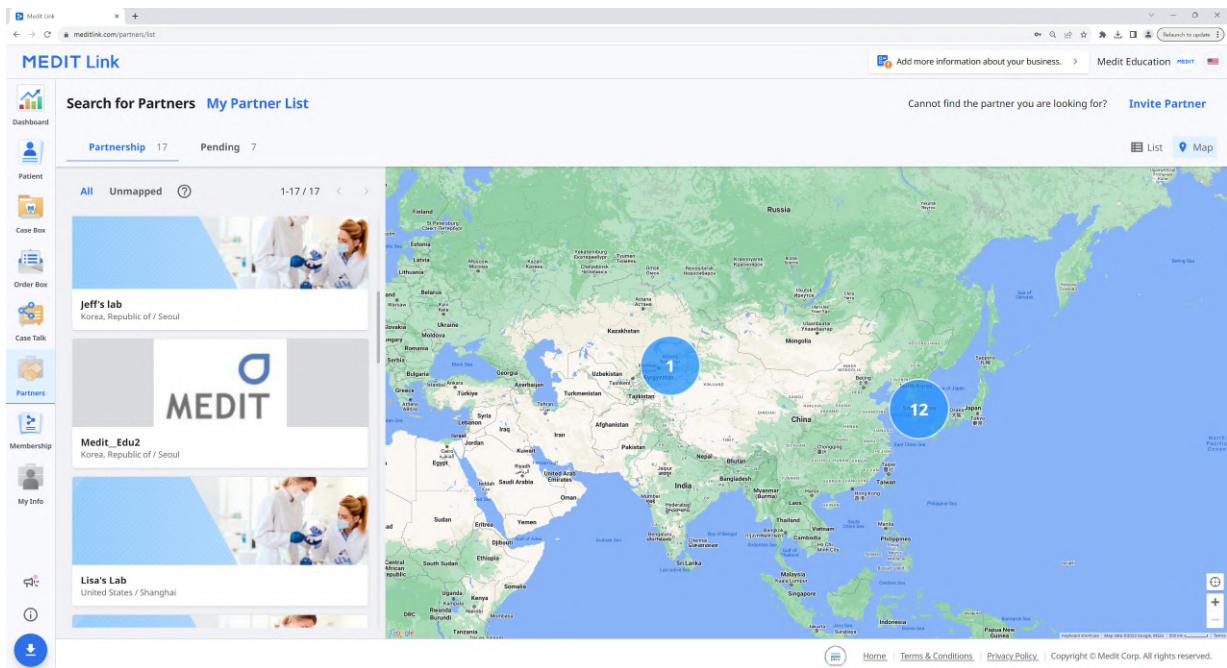

Mời đối tác

Nếu bạn muốn hợp tác với một phòng khám hoặc phòng lab, bạn có thể mời họ tham gia Medit Link. Quan hệ đối tác sẽ tự động hình thành sau khi họ chấp nhận lời mời.

1. Nhấp vào "Mời đối tác" ở phần trên cùng bên trái màn hình.
2. Nhập địa chỉ email của doanh nghiệp bạn muốn hợp tác và gửi cho họ lời mời kèm theo yêu cầu hợp tác.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Sau khi tổ chức được mời chấp nhận lời mời và đăng ký Medit Link, hệ thống sẽ tự động thiết lập quan hệ đối tác.

Membership

Thành viên


The screenshot displays the 'MEDIT Link' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The left sidebar contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Medit Cloud Storage Plan', shows the '10 TB Plan' selected. It lists benefits: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A 'Subscribe' button is present. Below this, '10 TB Plan Benefits' are listed, including a '10 TB Plan' with a code 'qqqq' and an expiration date of '2025-06-26'. A note states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More'. The right section, titled 'Cloud Storage', shows a 'Set Period' of '2018-01-01 ~ 2025-02-17'. A donut chart indicates '3.46 GB / 10 TB' usage. Below the chart, there's a table of storage items:

Item	Size
Total Selected	0.00 KB
Raw Data	52.36 GB
Result Files & Attachments	3.46 GB

The bottom of the page features a footer with links: Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, Copyright © Medit Co., and a logo.

Medit Cloud Storage Plan

Bạn có thể xem những gì được cung cấp trong mỗi gói, bao gồm voucher, phiếu giảm giá, và trạng thái gói đăng ký hiện tại của bạn. Bạn có thể nâng cấp gói của bạn hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

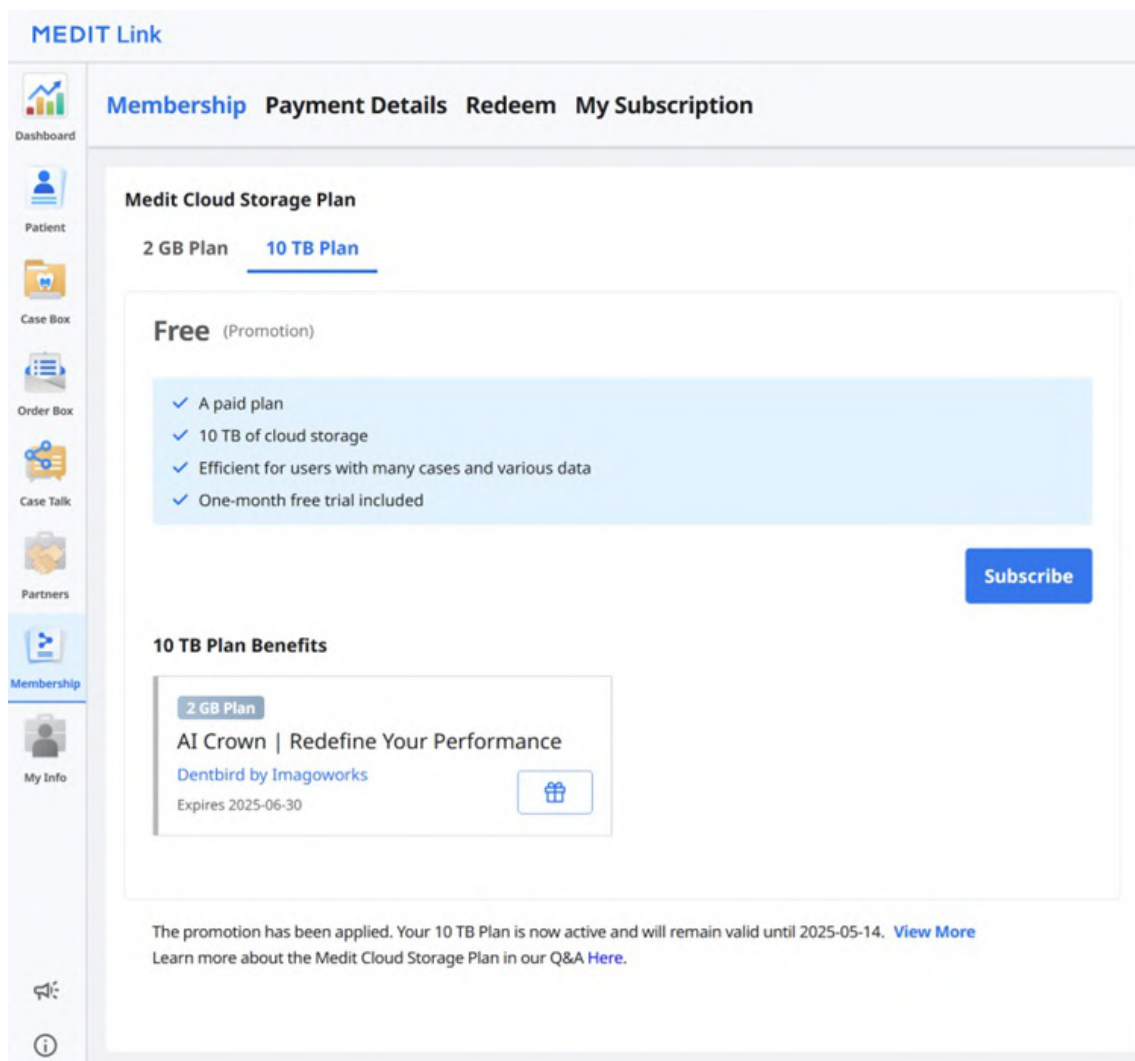

Medit Link cung cấp các gói bộ nhớ đám mây sau:

2 GB Plan

- Gói tiêu chuẩn miễn phí cho tất cả người dùng đã đăng nhập
- Bộ nhớ đám mây 2 GB
- Dành cho người dùng mới

10 TB Plan

- Gói trả phí
- Bộ nhớ đám mây 10 TB
- Dành cho người dùng có nhiều ca và nhiều dữ liệu khác nhau
- Dùng thử miễn phí một tháng


	2 GB Plan	10 TB Plan
Bộ nhớ đám mây	2 GB	10 TB
Phí hàng tháng	Miễn phí	\$9,99/tháng
* Bộ nhớ đám mây không tính dữ liệu thô vào dung lượng đã sử dụng.		

Lưu ý

Medit Link China có các gói thành viên. Bạn có thể dùng gói 10 TB Plan miễn phí cho đến khi có bản phát hành chính thức sau.

Bộ nhớ đám mây

Ở phần bên phải, bạn có thể quản lý bộ nhớ đám mây.

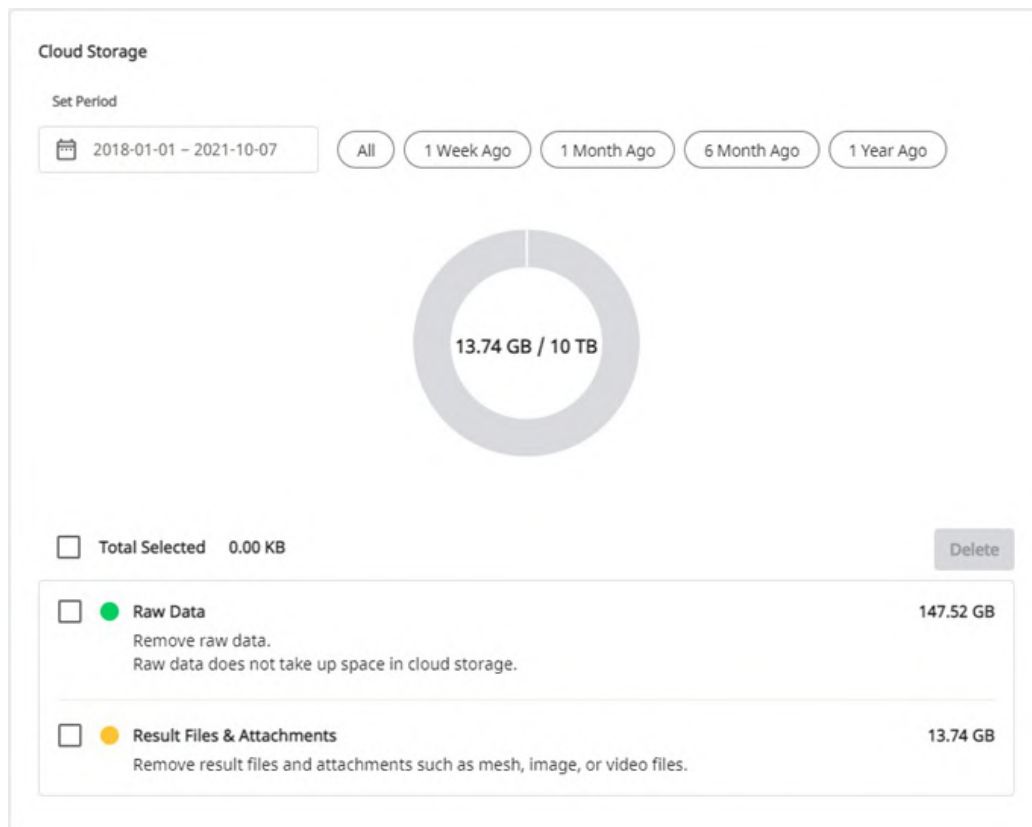

Đặt khoảng thời gian	Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian đó. - Tất cả: Xem tất cả các tệp. 1 tuần trước: Xem các tệp đã qua một tuần kể từ khi tạo. 1 tháng trước: Xem các tệp đã qua một tháng kể từ khi tạo. 6 tháng trước: Xem các tệp đã qua sáu tháng kể từ khi tạo. 1 năm trước: Xem các tệp đã qua một năm kể từ khi tạo.
Dữ liệu thô	Dữ liệu thô không chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây nên sẽ không có trong biểu đồ pi. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý dữ liệu thô từ đây nếu cần, ví dụ: xóa dữ liệu thô để bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân.
Kết quả & Tệp đính kèm	Tệp kết quả và tệp đính kèm chiếm dung lượng trong đám mây. Nếu đám mây đã đầy, bạn có thể lấy thêm dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các tệp không cần thiết.
Xóa	Xóa các tệp đã chọn khỏi bộ nhớ đám mây để giải phóng dung lượng.

Đăng ký

Nếu hiện đang dùng gói 2 GB Plan hoặc 10 TB Plan với mã đổi quà, bạn có thể đăng ký gói 10 TB Plan.

Thanh toán được hoàn tất thông qua dịch vụ Stripe (www.stripe.com).

1. Truy cập Thành viên > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan rồi nhấp vào nút "Đăng ký".

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Kiểm tra nội dung mô tả gói 10 TB Plan rồi nhấp lại vào "Đăng ký".

Subscribe Membership

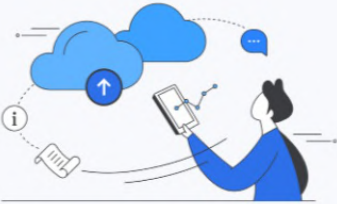

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly


- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. Kiểm tra giá cả, điều kiện và thông tin đầu vào cần thiết cho việc thanh toán. Sau đó, nhấp vào "Đăng ký".

Cancel Subscription

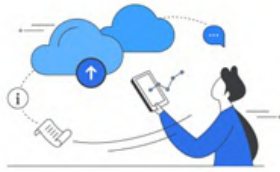

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

- Để xác nhận rằng bạn muốn hủy đăng ký, hãy nhấp lại vào "Hủy đăng ký" trong cửa sổ bật lên mới.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

- Gói đăng ký của bạn đã bị hủy.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

- Gói của bạn sẽ đổi thành 2 GB Plan kể từ ngày thanh toán tiếp theo và bộ nhớ đám mây sẽ bị giới hạn ở mức 2 GB. Nếu vượt quá dung lượng bộ nhớ đám mây, các tệp sẽ không được sao lưu và chức năng đặt hàng và chia sẻ sẽ không khả dụng.

Gói đăng ký của tôi

Bạn có thể xem chi tiết về gói đăng ký hiện tại, đăng ký lại hoặc hủy gói từ Gói đăng ký của tôi. Bạn cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán để bắt đầu áp dụng từ lần thanh toán theo lịch tiếp theo.

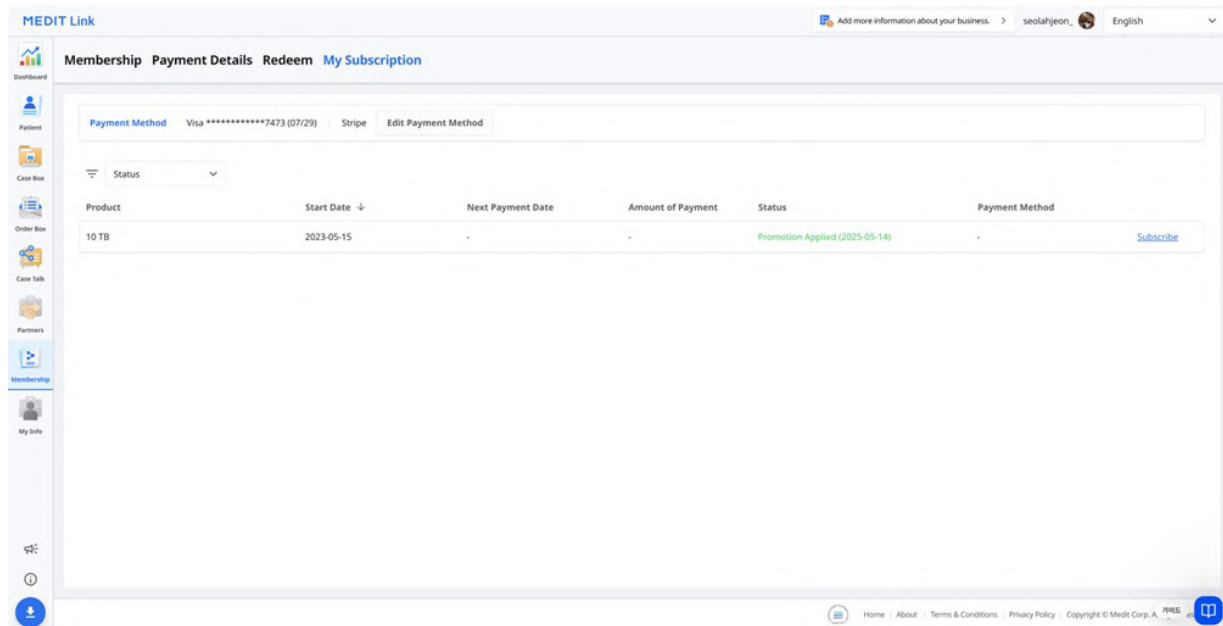

Chi tiết


Phụ kiện	Mô tả
Sản phẩm	Hiển thị loại gói đăng ký.
Ngày bắt đầu	Hiển thị thời gian gói đăng ký hoặc khuyến mại bắt đầu.
Ngày thanh toán tiếp theo	Hiển thị ngày thanh toán tiếp theo.
Số tiền thanh toán	Hiển thị số tiền thanh toán.
Trạng thái	Gói đăng ký - Hoạt động: Gói đăng ký đang hoạt động. - Sắp hết hạn: Gói đăng ký không gia hạn vào ngày thanh toán tiếp theo và sẽ bị hủy. - Đã hết hạn: Gói đăng ký đã hết hạn. Khuyến mại - Đã áp dụng khuyến mại: Đã kích hoạt mã khuyến mại. - Đang chờ xử lý khuyến mại: Đang chờ kích hoạt mã khuyến mại. - Hết hạn khuyến mại: Mã khuyến mại đã hết hạn.
Phương thức thanh toán	Hiển thị bốn số cuối trên thẻ dùng để thanh toán.

Đăng ký lại


Phụ kiện	Mô tả
Gói bộ nhớ đám mây	Nhấp vào nút gói đăng ký để đăng ký lại gói 10 TB Plan.
Gói đăng ký ứng dụng	Đăng nhập vào ứng dụng để đăng ký lại.

Cách thêm phương thức thanh toán

1. Nhấp vào "Chỉnh sửa phương thức thanh toán".

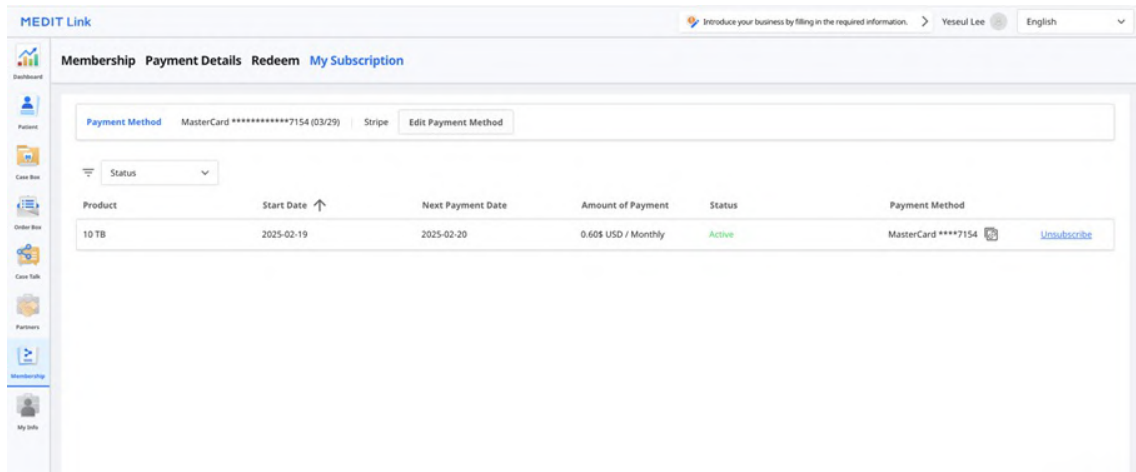

2. Nhấp vào "Thêm phương thức thanh toán".

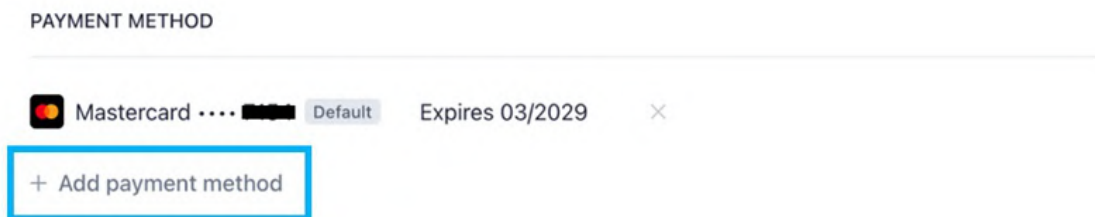

3. Nhập thông tin cần thiết và nhấp vào "Thêm".

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea


By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add


Go back

4. Phương thức thanh toán mới thêm sẽ được đặt làm mặc định và dùng cho lần thanh toán tiếp theo.

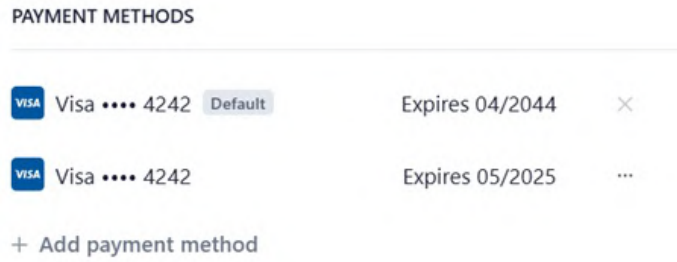


Cách thay đổi phương thức thanh toán

1. Nhấp vào biểu tượng menu mở rộng bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi trong cửa sổ hộp thoại thanh toán.

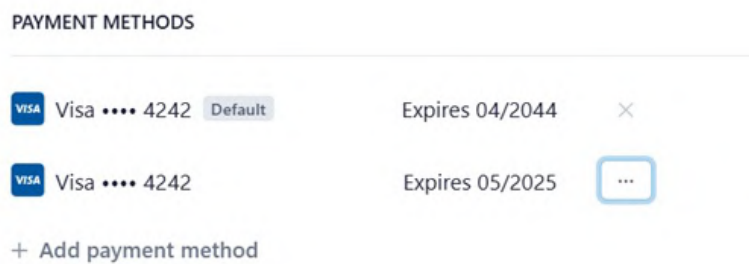

2. Nhấp vào “Đặt làm mặc định” để đặt thẻ đã chọn làm phương thức thanh toán mặc định.

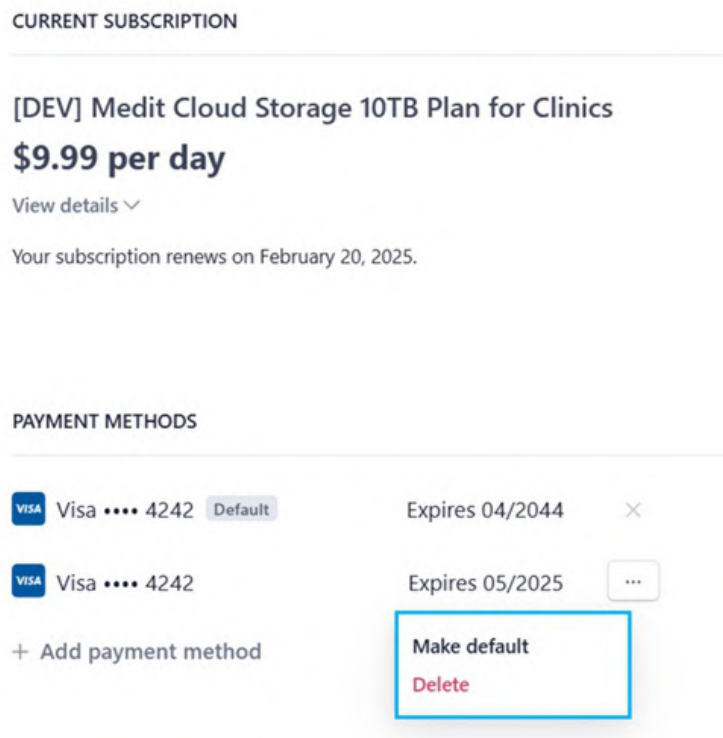

Đổi quà

Bạn có thể đổi quà mã khuyến mại để truy cập miễn phí vào gói 10 TB Plan.

Chi tiết

MEDIT Link
Add more information about your business.
seolah.jeon_dev_admin
English

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Register Redeem Code
Register

Redeem Code
All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home
About
Terms & Conditions
Privacy Policy
Copyright © Medit Corp.
GUIDES

Phụ kiện	Mô tả
Sản phẩm	Hiển thị gói áp dụng khuyến mại.
Khuyến mại	Hiển thị tên khuyến mại.
Số mã	Hiển thị số mã.
Ngày đăng ký	Hiển thị ngày đăng ký mã.
Từ	Hiển thị ngày bắt đầu khuyến mại.
Đến	Hiển thị ngày hết hạn khuyến mại.
Trạng thái	- Registered: Mã khuyến mại đã được thêm và hiện đang khả dụng. - Waiting: Đang chờ kích hoạt mã khuyến mại. - Activated: Đã kích hoạt mã khuyến mại. - Used: Mã khuyến mại đã hết hạn.

Đăng ký mã đổi quà

- Nhập mã đổi quà và nhấp vào "Đăng ký".
- Đọc thông báo và chọn "Đăng ký" hoặc "Áp dụng" trong hộp thoại bật lên.
 - Đăng ký:** Đăng ký mã đổi quà. Bạn có thể kích hoạt và sử dụng mã đổi quà sau khi đăng ký.
 - Áp dụng:** Đăng ký và kích hoạt mã đổi quà. Khuyến mãi giảm giá được áp dụng ngay lập tức.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

Kích hoạt mã đổi quà

Bạn có thể đăng ký nhiều mã đổi quà, nhưng bạn cần kích hoạt mã bạn muốn sử dụng.

1. Nhấp vào nút "Kích hoạt" bên cạnh mã bạn muốn sử dụng.
- Nếu không có mã nào có trạng thái "Activated", mã bạn chọn sẽ được áp dụng ngay lập tức.
 - Nếu có mã đã kích hoạt, mã mới chọn sẽ chuyển sang trạng thái "Waiting". Khi mã đổi quà đang kích hoạt hết hạn, mã đổi quà mới ở trạng thái "Waiting" sẽ tự động được kích hoạt.

 Lưu ý

Chỉ có thể kích hoạt một mã đổi quà và chỉ một mã có thể ở trạng thái "Waiting".

Chi tiết thanh toán

Bạn có thể xem gói đăng ký và lịch sử thanh toán trong tab Chi tiết thanh toán.

MEDIT Link

Introduce your business by filling in the required information. > Yeseul Lee English

Dashboard

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Payment Date

Product

Payment Type

Duration

Details

Amount of Payment

Status

AllMembershipMedit Apps

2024-11-21 ~ 2025-02-19

2025-02-19	10 TB	Subscription	2025-02-19 ~ 2025-02-20	Monthly payment	0.00 \$ (USD)	Payment Completed
------------	-------	--------------	-------------------------	-----------------	---------------	-------------------


1

스마트 지원


Phụ kiện	Mô tả
Ngày thanh toán	Hiển thị ngày thanh toán.
Sản phẩm	Hiển thị ứng dụng hoặc gói đã mua.
Loại thanh toán	Hiển thị loại thanh toán: - Gói đăng ký - Thanh toán một lần
Thời gian	Hiển thị thời hạn của gói đăng ký.
Chi tiết	Hiển thị thông tin thanh toán chi tiết.
Số tiền thanh toán	Hiển thị số tiền cần thanh toán cho gói đăng ký hoặc gói mua một lần.
Trạng thái	- Payment Completed: Khoản thanh toán đã được xử lý. - Payment Failed: Khoản thanh toán chưa được xử lý. - Payment Incomplete: Khoản thanh toán chưa được hoàn tất. Nhấp vào "Thanh toán ngay" để tiếp tục. - Đang chờ: Khoản thanh toán đang chờ xử lý để gia hạn gói đăng ký.

Xem chi tiết hóa đơn

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng biên lai ở bên phải để xem biên lai và hóa đơn thanh toán.

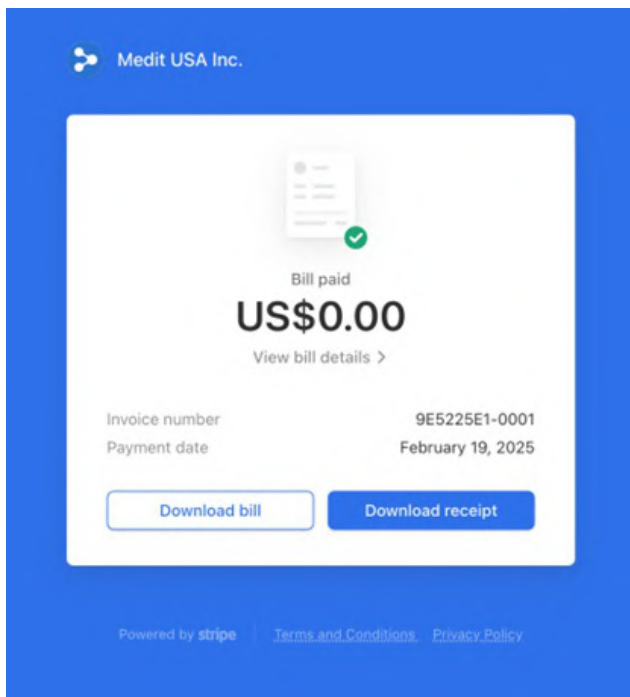

Nhấp vào "Xem chi tiết hóa đơn" để xem chi tiết thanh toán.

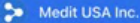



Bill paid
US\$0.00
[View bill details](#) ×

Invoice number
Payment date

9E5225E1-0001
February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by [stripe](#)

[Terms and Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

US\$0.60

Quantity 1 piece

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Tài khoản của tôi

My Info cho phép bạn xem lại và chỉnh sửa thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký, cũng như kiểm tra trạng thái thành viên.

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner



Account Information

Email Address

[Change Email Address](#)

Password

[Change Password](#)

Name

Language

Country/Region

 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin về phòng khám hoặc phòng lab. Chỉ tài khoản quản trị viên mới có phần này.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** **My Scanner**

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

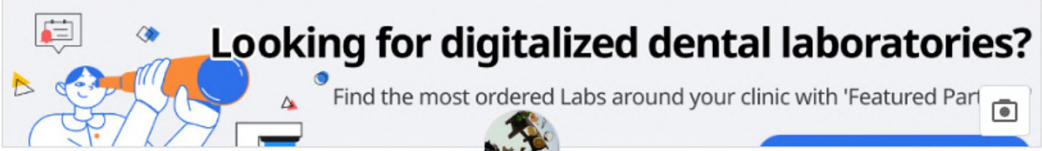

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Máy quét của tôi

Bạn có thể kiểm tra thông tin thiết bị được kết nối cho tài khoản.

MEDIT Link

Dashboard

Patients

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © 2024

TRUBLESHOOTING

Add more information about your business.

seolahjeon

English

My Account

My Clinic

My Scanner

No.

Type

Serial Number

Usage Time

Last Connected

Last Calibrated

Warranty Start Date

Warranty Expiry Date

Days L...

Status

1

i700

AZ2105102619

0d 18h 44m

2024-04-12 15:19

2024-03-28 09:10

2024-02-27

2025-02-26

Expired

Unregistered

2

i700

AZ2105102622

0d 18h 39m

2023-04-26 20:30

2023-04-25 14:47

2021-07-09

2022-07-08

Expired

Unregistered

3

i700

AZ2305100410

0d 6h 38m

2025-03-06 09:52

2024-09-05 14:23

-

-

-

Registered

4

i600

BG2202100001

0d 0h 58m

2023-08-28 18:10

2023-07-13 15:00

2022-10-30

2023-10-29

Expired

Unregistered

5

i600

BG2202100026

0d 8h 32m

2022-10-28 17:03

2022-09-25 09:00

-

-

-

Unregistered

6

i600

BG2202100029

0d 2h 38m

-

2022-06-16 11:58

-

-

-

Unregistered

7

i900

CA2405100106

0d 11h 46m

2025-02-26 08:37

2024-11-07 10:11

-

-

-

Unregistered

Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © 2024

TRUBLESHOOTING

Phụ kiện	Mô tả
Loại	Hiển thị tên mẫu.
Số sê-ri	Hiển thị số sê-ri thiết bị.
Thời gian sử dụng	Cho biết thời gian sử dụng thiết bị.
Trạng thái	Hiển thị trạng thái đăng ký của thiết bị: 'Đăng ký' cho biết máy quét đã được kết nối và đăng ký thành công. 'Chưa đăng ký' cho biết máy quét chưa được đăng ký. Thông tin đăng ký máy quét ở nhóm hiện tại sẽ mất nếu bạn đăng ký máy quét với nhóm khác.
Kết nối cuối cùng	Hiển thị ngày kết nối cuối cùng.
Hiệu chuẩn cuối cùng	Hiển thị ngày hiệu chuẩn cuối cùng.
Ngày bắt đầu bảo hành	Hiển thị ngày kích hoạt bảo hành.
Ngày kết thúc bảo hành	Hiển thị ngày hết hạn bảo hành.
Ngày còn lại	Hiển thị số ngày còn lại trước khi bảo hành hết hạn.
Mua	Cho phép người dùng mua và gia hạn thời gian bảo hành.
Biểu tượng xóa	Cho phép người dùng xóa máy quét khỏi danh sách.

Menu khác

Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Website liên quan

Cho bạn biết nhiều thông tin khác nhau về cách sử dụng Medit Link. Truy cập vào các tài nguyên đào tạo và thông tin của Medit, chẳng hạn như Medit Academy, kênh YouTube Medit Academy và Trung tâm hỗ trợ Medit.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Tải xuống ứng dụng Medit Link

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của trình cài đặt chương trình từ trang web. Menu này hữu ích khi bạn mất trình cài đặt được cung cấp trong gói sản phẩm hoặc trình cài đặt của bạn đã lỗi thời.

 **Lưu ý**

Medit Link tự động cập nhật khi bạn có kết nối Internet.



Windows

macOS

Tổng quan

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Thanh tiêu đề	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Thanh tiêu đề để biết thông tin chi tiết.
2	Menu	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Menu để biết thông tin chi tiết.
3	Công cụ và chức năng	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > File Viewer và Ứng dụng Medit Link > Tùy chọn hiển thị để biết thông tin chi tiết.
4	Danh sách ca	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Lọc và Tìm kiếm để biết thông tin chi tiết.

Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.

Loại tài khoản		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Tài khoản phòng khám	Quản trị viên	O	O	O	X	X	O	O	O
	Thành viên	O	O	O	X	X	O	O * Chỉ tính năng khôi phục	O
Tài khoản phòng lab	Quản trị viên	X	X	X	O	O	O	O	O
	Thành viên	X	X	X	O	O	O	O * Chỉ tính năng khôi phục	O

Thanh tiêu đề

Thanh tiêu đề cho phép truy cập nhanh vào các tính năng như thông tin tài khoản, thông báo, thông báo và cập nhật, cài đặt và trạng thái mạng.



Thông tin tài khoản

Mục Thông tin tài khoản chứa thông tin người dùng cơ bản như hình ảnh hồ sơ, tên phòng khám hoặc phòng lab, địa chỉ email và tên người dùng.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

Thông báo

Bạn có thể xem các thông báo liên quan đến quan hệ đối tác, đơn hàng và quy trình làm việc.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	Chọn hộp để chỉ hiển thị thông báo chưa đọc.
2	Nhấp vào thông báo bất kỳ để chuyển ngay đến ca hoặc trang web liên quan.

Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Cài đặt

Hộp thoại Cài đặt cho phép người dùng cấu hình chương trình.

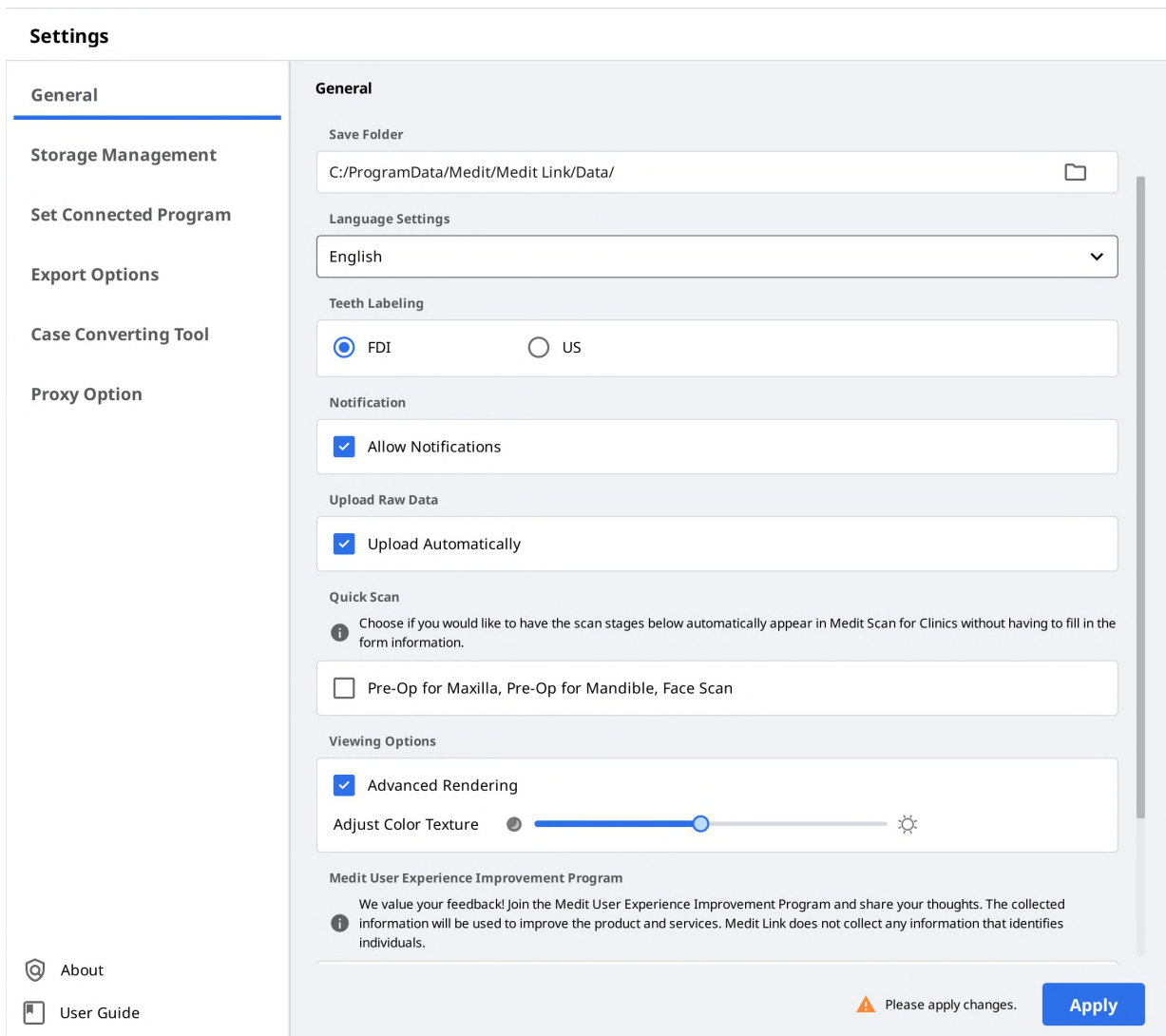

Vui lòng tham khảo [Ứng dụng Medit Link > Cài đặt](#) để biết thông tin chi tiết về các tùy chọn cài đặt.

Trạng thái mạng

Medit Link cho phép bạn sử dụng liền mạch tất cả các tính năng khi có kết nối mạng.

Biểu tượng trạng thái mạng hiển thị trên thanh tiêu đề để giúp bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối mạng theo thời gian thực.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Nếu kết nối mạng không tốt, bạn có thể gặp phải những hạn chế sau:

- Một số chức năng sẽ bị hạn chế, chẳng hạn như đặt hàng ca, tạo ca, chia sẻ qua Case Talk và đồng bộ đám mây.
- Hiệu suất tổng thể của dịch vụ có thể giảm đi do tác động từ môi trường mạng.

Trong trường hợp này, bạn có thể vào Chế độ ngoại tuyến để thực hiện các tác vụ cơ bản, sau đó sử dụng các tính năng cần Internet khi kết nối mạng.

Lưu ý

Biểu tượng mạng thể hiện tốc độ phản hồi giữa khu vực hiện tại và AWS (Amazon Web Service). Biểu tượng này không có ý nghĩa về tốc độ mạng. Do vậy, đôi khi biểu tượng mạng hiển thị trạng thái kém hoặc tệ, mặc dù tốc độ mạng đủ nhanh.

Nếu quy trình khác sử dụng cùng một mạng, tốc độ có thể hiển thị ở mức kém hoặc tệ và hiệu suất tổng thể của Medit Link có thể kém. Trong trường hợp này, vui lòng không dùng chung mạng với các quy trình khác. Ví dụ: tính năng "Tải lên dữ liệu thô" là một trong những quy trình mạng nặng. Nếu biểu tượng hiển thị trạng thái kém hoặc tệ, hãy đi tới Cài đặt > Tải lên dữ liệu thô và tắt "Tải lên tự động".

Cài đặt

Chung

Cung cấp các tùy chọn thiết lập hệ thống tổng thể.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Thư mục lưu	Chỉ định một thư mục để lưu trữ kết quả dữ liệu được tạo ra trong Medit Link và các chương trình được kết nối.	
Thư mục cài đặt ứng dụng	Chỉ định đường dẫn cài đặt cho Medit Apps và ứng dụng của đối tác có sẵn trong App Box.	
Cài đặt ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ cho chương trình.	
Dán nhãn răng	Lựa chọn hệ thống dán nhãn răng FDI hoặc Hoa Kỳ.	
Thông báo	Khi chọn, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật chương trình.	
Tải lên dữ liệu thô	Khi chọn, dữ liệu thô sẽ tự động được tải lên đám mây. Chức năng này giúp sao lưu dữ liệu gốc và thực hiện quét liên mạch khi sử dụng Medit Link với cùng một tài khoản trên máy tính khác. Sao lưu đám mây dữ liệu gốc chỉ áp dụng với dữ liệu thu được trong Medit Scan for Clinics.	
Quét nhanh	Chọn xem bạn có muốn các giai đoạn quét dưới đây tự động xuất hiện trong Medit Scan for Clinics mà không cần phải điền thông tin vào mẫu hay không. • Trước phục hình hàm trên • Trước phục hình hàm dưới • Quét mặt	
Tùy chọn hiển thị	Kết xuất nâng cao	Khi chọn, mô hình 3D được hiển thị ở dạng kết xuất sống động và chân thực hơn.
	Điều chỉnh kết cấu màu	Điều chỉnh độ sáng của mô hình 3D. * Màu sắc thu được có thể hơi khác so với Medit Link khi bạn mở cùng một dữ liệu bằng phần mềm khác.
Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng Medit	Tham gia Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng Medit. • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. • Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.	
Trang mặc định sau khi đăng nhập	Chọn menu mặc định để hiển thị khi khởi động chương trình. • Tài khoản phòng khám có thể chọn Patient hoặc Case Box • Tài khoản phòng lab có thể chọn In Box hoặc Work Box	

Quản lý lưu trữ

Kiểm tra và quản lý không gian lưu trữ cục bộ và đám mây.

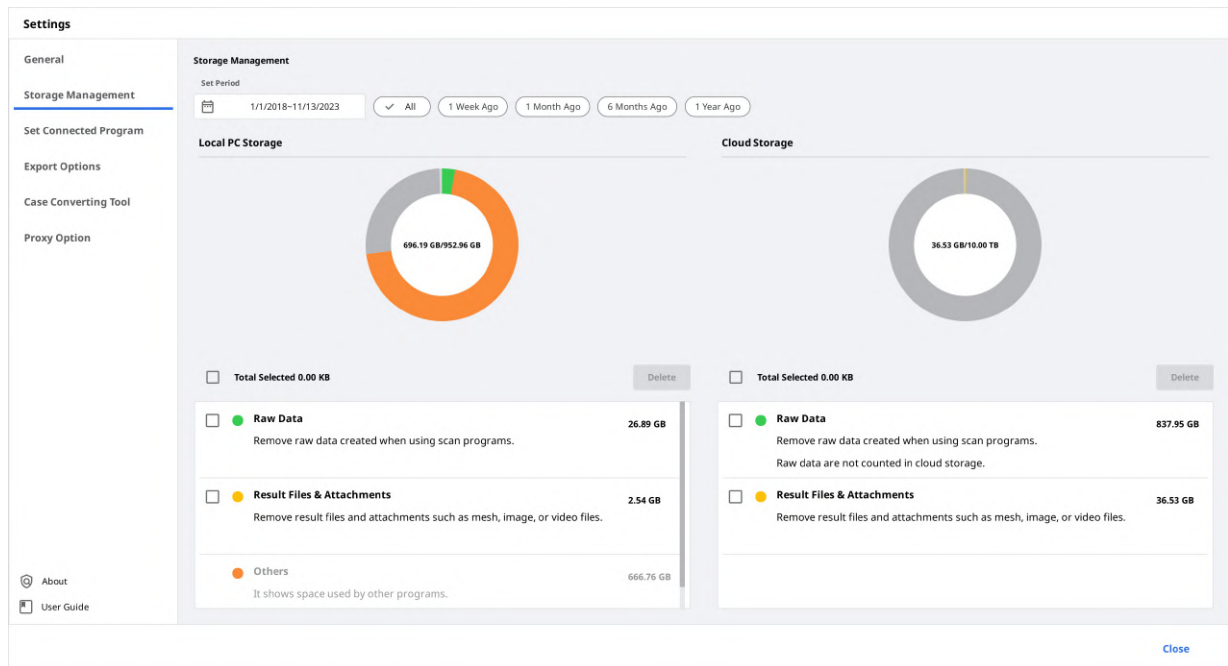

Đặt khoảng thời gian

Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian dưới đây.

- Tất cả: Xem tất cả các tệp.
- 1 tuần trước: Xem các tệp đã qua một tuần kể từ khi tạo.
- 1 tháng trước: Xem các tệp đã qua một tháng kể từ khi tạo.
- 6 tháng trước: Xem các tệp đã qua sáu tháng kể từ khi tạo.
- 1 năm trước: Xem các tệp đã qua một năm kể từ khi tạo.

Bộ nhớ cục bộ

Quản lý dung lượng lưu trữ của máy tính.

Dữ liệu thô	Xóa dữ liệu thô đã chọn khỏi máy tính. Nếu dữ liệu thô đã được tải lên đám mây, bạn có thể tải xuống và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
Kết quả & Tệp đính kèm	Xóa kết quả và các tệp đính kèm khỏi máy tính, chẳng hạn như lưới, hình ảnh và video. Nếu những tệp này đã được tải lên đám mây, bạn có thể tải xuống và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
Khác	Xem các tệp được sử dụng để vận hành hệ thống và các chương trình khác. Tùy chọn này hiển thị bộ nhớ máy tính của bạn. Bạn không thể xóa các tệp này khỏi Medit Link.
Xóa	Xóa các tệp đã chọn khỏi máy tính.

Bộ nhớ đám mây

Quản lý dung lượng lưu trữ đám mây.

Dữ liệu thô	Dữ liệu thô không chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây nên sẽ không có trong biểu đồ pi. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý dữ liệu thô từ đây nếu cần, ví dụ: xóa dữ liệu thô để bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân, v.v.
Kết quả & Tập đính kèm	Tập kết quả và tập đính kèm chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây. Nếu đám mây đã đầy, bạn có thể lấy thêm dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các tập không cần thiết.
Mua dung lượng	Nếu bạn đang dùng gói 2 GB Plan, hãy đăng ký gói 10 TB Plan để mở rộng bộ nhớ đám mây.
Xóa	Xóa các tập đã chọn khỏi bộ nhớ đám mây để giải phóng dung lượng lưu trữ.

Cài đặt chương trình được kết nối

Quản lý các chương trình hỗ trợ tích hợp trong Medit Link.

Settings

- General
- Storage Management
- Set Connected Program**
- Export Options
- Case Converting Tool
- Proxy Option
- About
- User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

Bạn có thể kết nối các chương trình sau:

	Tài khoản phòng khám	Tài khoản phòng lab
Chương trình quét	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Lưu ý

Medit Link dành cho Mac không hỗ trợ tích hợp các dịch vụ sau.

- Medit Scan for Labs

Tùy chọn xuất

Cài đặt cách xuất tệp từ Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Loại	Chọn chương trình CAD mà bạn muốn sử dụng để thiết kế. Chương trình sẽ điều chỉnh kết quả dựa trên lựa chọn của bạn, cho phép bạn tiếp tục thiết kế mà không cần căn chỉnh thêm đối với trục.
Xuất tệp đến	Chỉ định đường dẫn nơi bạn muốn lưu trữ kết quả.
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới cuối cùng.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén & Kết hợp,	Nén tệp: Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất. Kết hợp lưới riêng lẻ: Kết hợp tất cả kết quả cho hàm trên hoặc hàm dưới vào một tệp. Khi sử dụng một số chương trình không thể nhập và xử lý nhiều tệp, bạn có thể gộp chúng thành một để xử lý trong các chương trình đó.
Tùy chọn khi thư mục hoặc tệp giống hệt đã tồn tại.	Chọn hành động mặc định cho các ca khi tên thư mục hoặc tệp giống hệt đã tồn tại trong đường dẫn đích. • Luôn hỏi khi xuất. • Xuất một tệp mới và ghi đè lên các tệp hiện có. Tệp hiện đang lưu trữ sẽ bị mất. • Tạo một thư mục và xuất các tệp
Quy tắc tên thư mục	Xác định quy tắc tạo tên thư mục khi xuất tệp. Quy tắc đã đặt sẽ được áp dụng để đặt tên thư mục và tệp đã xuất sẽ lưu trong thư mục được tạo. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID đơn hàng
Quy tắc tên tệp	Xác định quy tắc đặt tên tệp được xuất. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID đơn hàng

Công cụ chuyển đổi ca


Bạn có thể di chuyển ca giữa các tài khoản khác nhau bằng cách xuất ca hiện có trong tài khoản hoặc nhập ca đã xuất từ tài khoản khác.

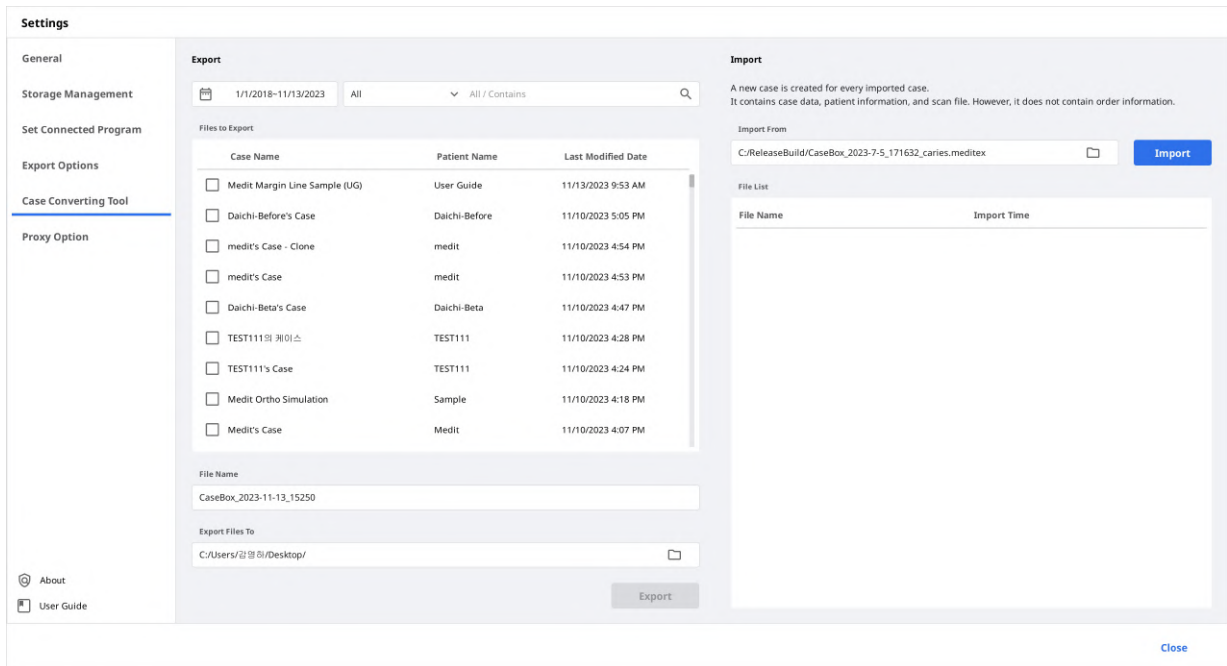


Xuất ca

Xuất các ca trong tài khoản hiện đang đăng nhập sang máy tính cục bộ.


1. Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

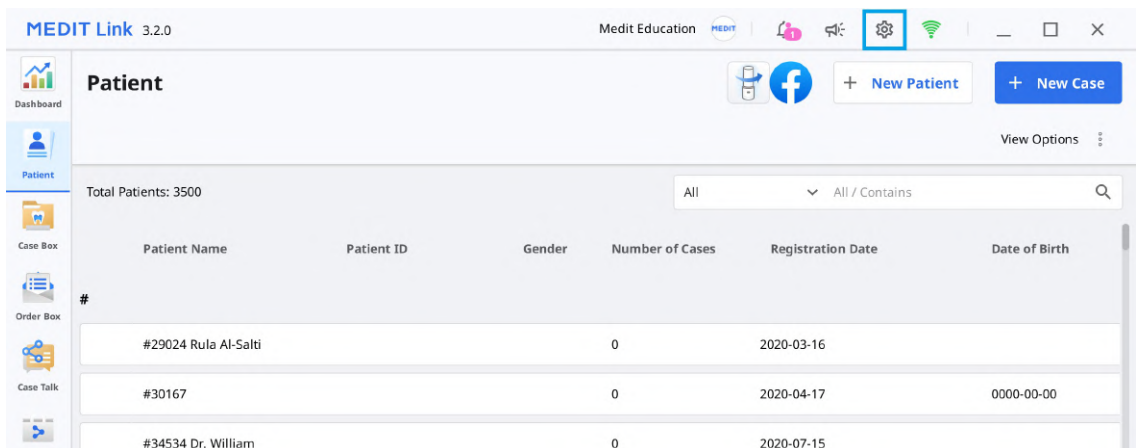


2. Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

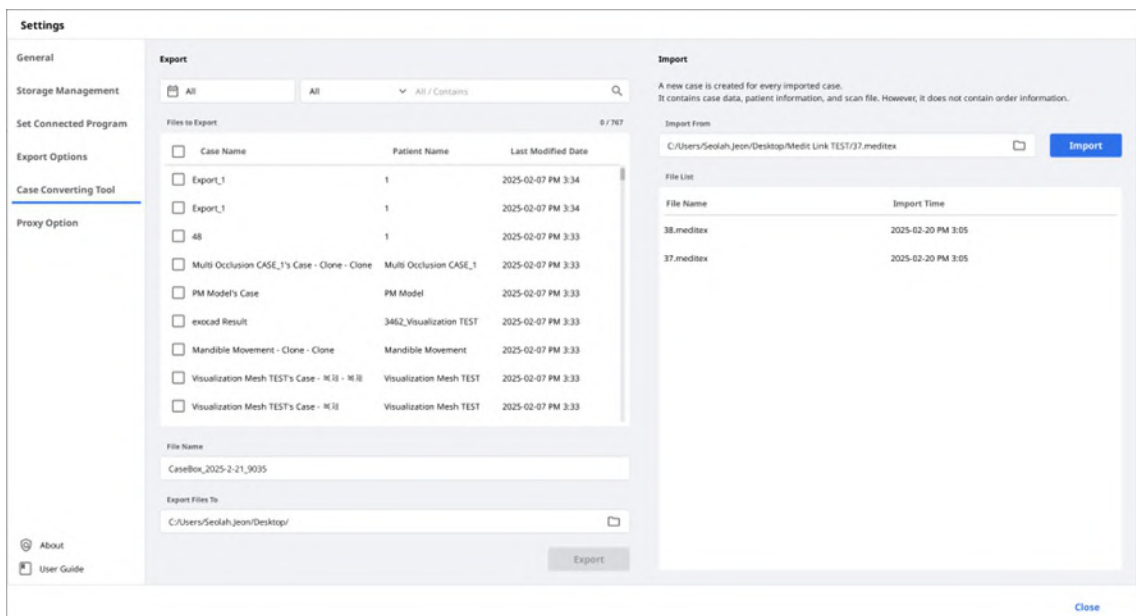

3. Trong phần Xuất, đặt khoảng thời gian hoặc tìm kiếm ca để xuất nếu cần.

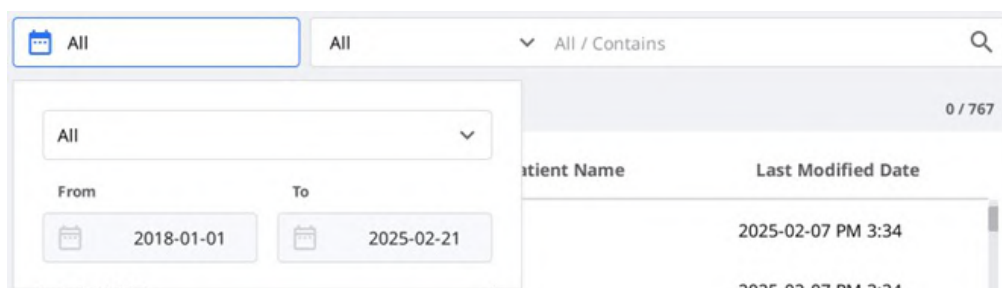

4. Chọn ca bạn muốn xuất từ danh sách trong phần "Tập cần xuất".

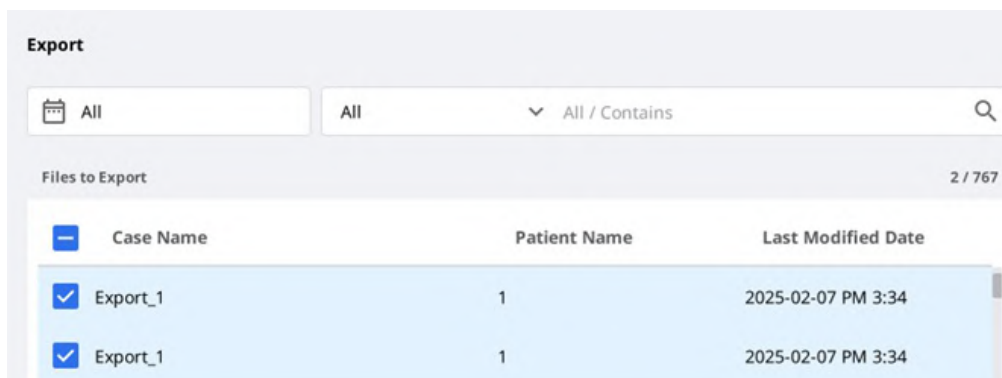

5. Đặt tên tệp bằng cách chỉnh sửa tên ca trong trường Tên tệp.
6. Đặt thư mục đích để xuất ca đã chọn.
7. Nhấp vào "Xuất."
8. Nhấp vào "Có" để mở thư mục nơi tệp được xuất đến.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. Các ca đã xuất sẽ được lưu ở định dạng tệp .meditex.

Nhập ca


1. Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

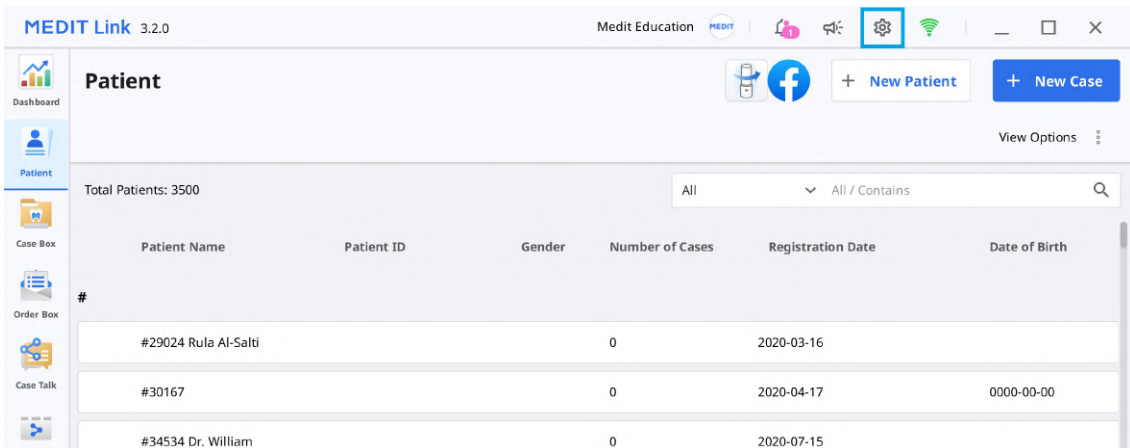

- Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

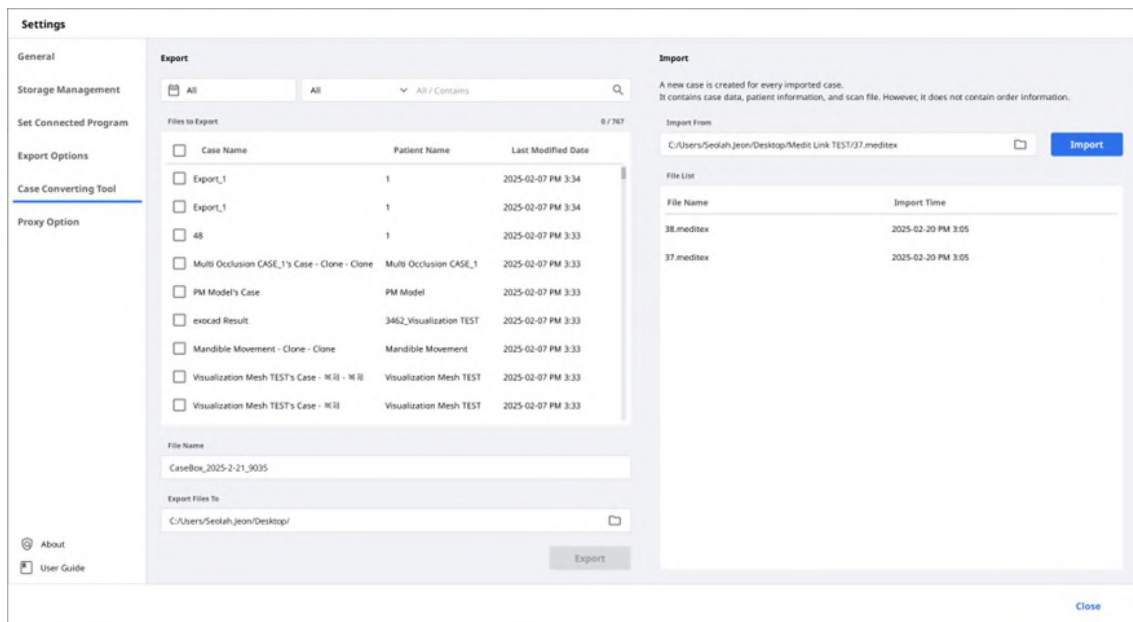

- Trong phần Nhập, nhấp vào biểu tượng thư mục để duyệt tìm tệp .meditex bạn muốn nhập trong máy tính của bạn.

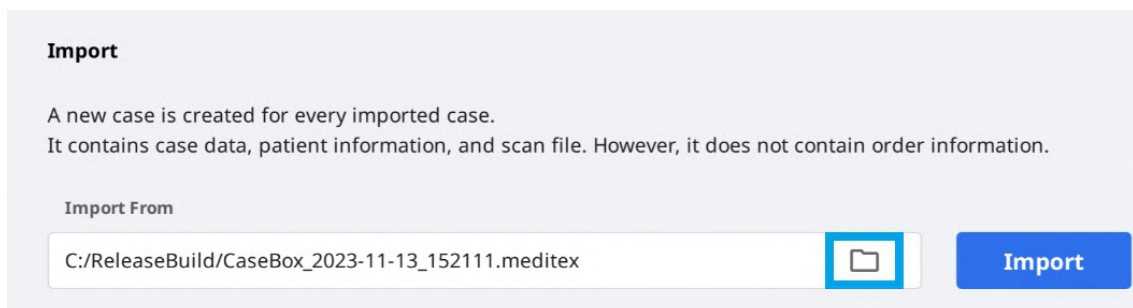

- Nhấp vào nút "Nhập" và kiểm tra các tệp cần nhập trong danh sách bên dưới.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Ca đã nhập cũng sẽ xuất hiện trong Case Box (Tài khoản phòng khám) hoặc Work Box (Tài khoản phòng lab).

Tùy chọn proxy

Trong một số môi trường mạng hạn chế, bạn có thể thay đổi cài đặt mạng.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

[Close](#)

Giới thiệu

Hiển thị thông tin chi tiết về Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Hướng dẫn sử dụng


Nhận hướng dẫn sử dụng Medit Link.

Bạn cần có kết nối Internet để mở hướng dẫn sử dụng.

Menu

Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho toàn bộ công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

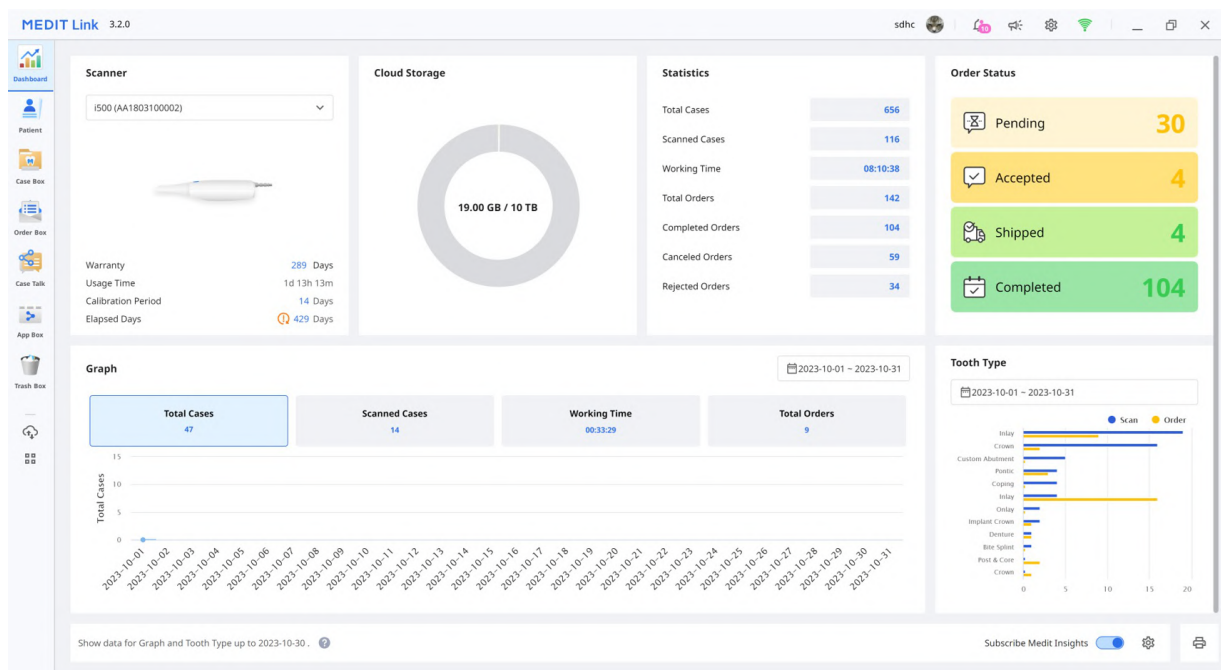

Lưu ý

Vui lòng tham khảo [Trang web Medit Link > Dashboard](#) để biết thêm thông tin về dashboard và Medit Insights.

Patient

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc gộp bệnh nhân trên menu Patient.

Patient Name ↓	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
agghfsgdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Thêm bệnh nhân mới

1. Nhấp vào "Bệnh nhân mới".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

[Cancel](#) [Save](#)


2. Điền thông tin cần thiết vào hộp thoại Bệnh nhân mới, sau đó nhấp vào "Lưu".

Xóa bệnh nhân



Bạn chỉ có thể xóa một bệnh nhân khi bệnh nhân đó không có ca nào.

1. Chọn bệnh nhân cần xóa khỏi danh sách.

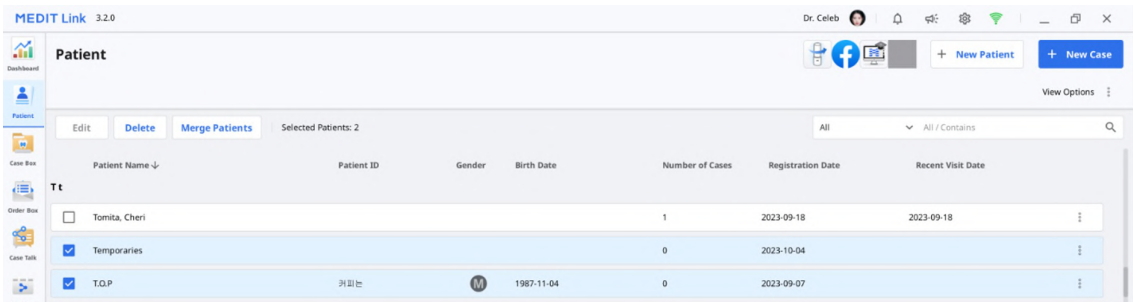


2. Nhấp vào "Xóa".

Gộp bệnh nhân

Bạn có thể gộp tất cả các ca của nhiều bệnh nhân thành một bệnh nhân.

1. Chọn bệnh nhân bạn muốn gộp từ danh sách.

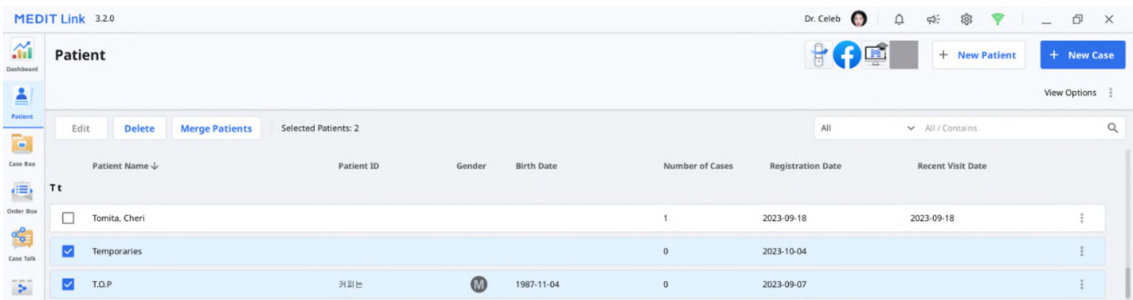

2. Nhấp vào "Gộp bệnh nhân".
3. Chọn bệnh nhân đích mà bạn muốn gộp tất cả các ca vào.
4. Tất cả các ca được gộp vào bệnh nhân đích và thông tin bệnh nhân của bệnh nhân đích không thay đổi.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel **Apply**

5. Nhấp vào "Áp dụng" để tiến hành gộp.

Case Box/Work Box

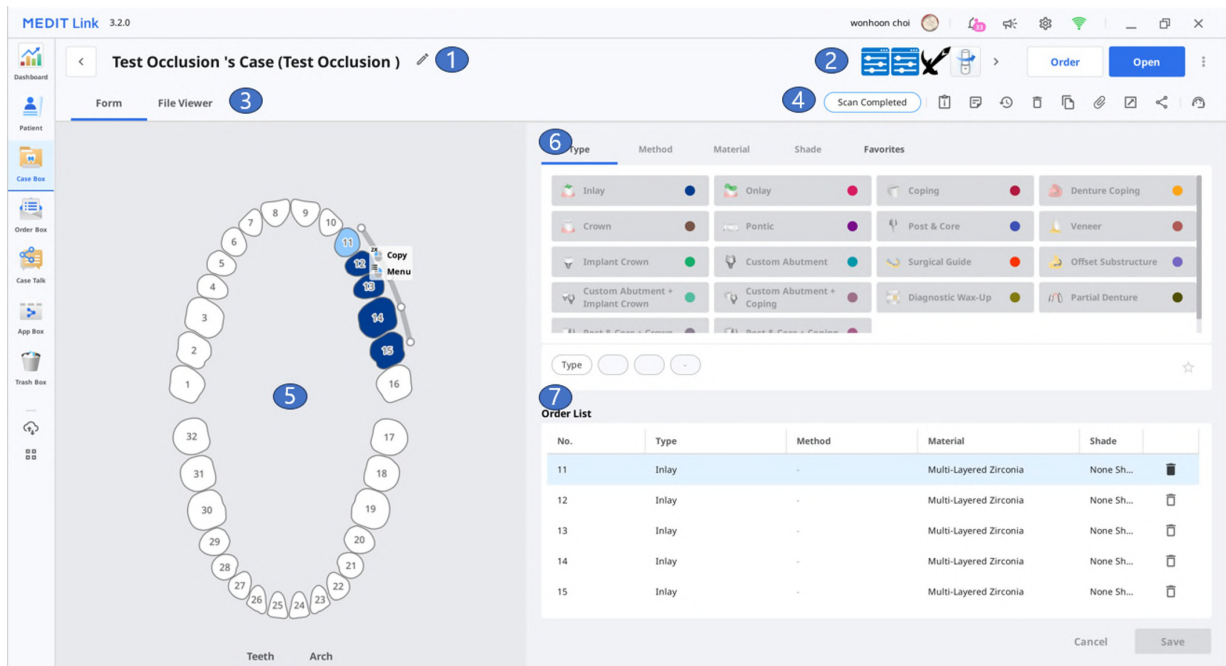

1	Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2	Cung cấp các tính năng chính có sẵn: Nút Quét hoặc Mở, nút Đặt hàng, biểu tượng ứng dụng.
3	Hiển thị các tab có sẵn: Mẫu, File Viewer.
4	Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp.
5	Hiển thị giao diện người dùng đăng ký qua mẫu cho chương trình quét đã chọn.
6	Cung cấp thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc để người dùng lựa chọn cho số răng đã chọn.
7	Hiển thị thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc áp dụng cho răng đã chọn.

Tab trong Case Box/Work Box

Mẫu	File Viewer
Tab mẫu cung cấp giao diện người dùng để nhập thông tin cơ bản cho công việc quét, chẳng hạn như loại, phương pháp, vật liệu cho số răng và các tùy chọn quét. Thông tin bạn nhập sẽ được chuyển đến chương trình quét đã kết nối và được dùng làm thông tin đặt hàng khi đặt hàng với đối tác.	Xem tệp kết quả do chương trình quét và CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Chức năng trong Case Box/Work Box

Các chức năng sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca	Hiển thị trạng thái của ca.
	Truy cập Order Box/In Box	Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Thông tin ca	Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.
	Ghi chú & Tag	Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.
	Lịch sử ca	Cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử ca. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Xóa	Xóa ca. Bạn không thể xóa ca đã đặt hàng hoặc ca được tạo ngoại tuyến.
	Sao chép	Tạo một bản sao của ca hiện tại trong Case Box. Tất cả dữ liệu sẽ được sao chép vào bản sao của ca. Tính năng này giúp sao chép thông tin điều trị cho cùng một bệnh nhân hoặc đặt hàng bổ sung với cùng một thông tin hoặc tệp.
	Đính kèm	Đính kèm tập ở nhiều định dạng khác nhau.
	Xuất	Xuất tệp kết quả quét hoặc CAD sang máy tính cục bộ. Bạn có thể chọn định dạng tệp ưa thích khi xuất tệp. Bạn có thể dùng tệp đã xuất trong phần mềm CAD và CAM cho công việc sau này.
	Chia sẻ	Tạo liên kết để chia sẻ. Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung. Bạn có thể tùy ý chia sẻ liên kết với bất kỳ ai hoặc chỉ những người cụ thể. Bạn cũng có thể đặt mã PIN hoặc ngày hết hạn liên kết để bảo mật thông tin cá nhân.
	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Đến trang Trung tâm hỗ trợ Medit để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Order Box/In Box

1	Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2	Cung cấp các chức năng quản lý đơn hàng (chấp nhận/hủy; giao/nhận).
3	Hiển thị các tab có sẵn: Đơn hàng, File Viewer.
4	Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp: trạng thái ca, phím tắt để xem thông tin chi tiết, thông tin ca, ghi chú & tag, v.v.
5	Hiển thị thông tin chi tiết cho đơn hàng, bao gồm số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên đối tác, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao và ghi chú & tag.
6	Hiển thị thông tin sản phẩm đã đặt hàng và trạng thái giao hàng.

Tab trong Order Box/In Box

Đơn hàng	File Viewer
Kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến đơn hàng, chẳng hạn như số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên tài khoản, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao, ghi chú và tag.	Xem tệp do các hoạt động quét/CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Case Talk

Bạn có thể chia sẻ các ca đã tạo trong Medit Link với những người cụ thể, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua Case Talk trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.



Lưu ý

Dịch vụ Case Talk đòi hỏi phải có kết nối internet.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.

App Box

App Box cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau có vai trò bổ sung cho quy trình quét cơ bản và nâng cao năng suất. Bạn có thể tải xuống và cài đặt các ứng dụng được cung cấp để tạo thiết bị nha khoa, phân tích dữ liệu quét, hỗ trợ bạn trong quá trình tư vấn hoặc đơn giản hóa quy trình làm việc.

All


Tab "Tất cả" hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng được cung cấp bao gồm ứng dụng gốc do Medit phát triển (Medit Apps) và các ứng dụng đối tác. Ứng dụng đối tác là các ứng dụng tích hợp với đối tác của Medit trong các lĩnh vực nha khoa kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như in 3D, phần mềm CAD/CAM, v.v.

Medit Apps

Tab "Medit Apps" chỉ hiển thị danh sách các ứng dụng gốc do Medit phát triển.

Đã tải về

Tab "Đã tải xuống" hiển thị danh sách các ứng dụng hiện đã cài đặt trên PC của bạn và các ứng dụng được tài khoản người dùng tải xuống trước đây.

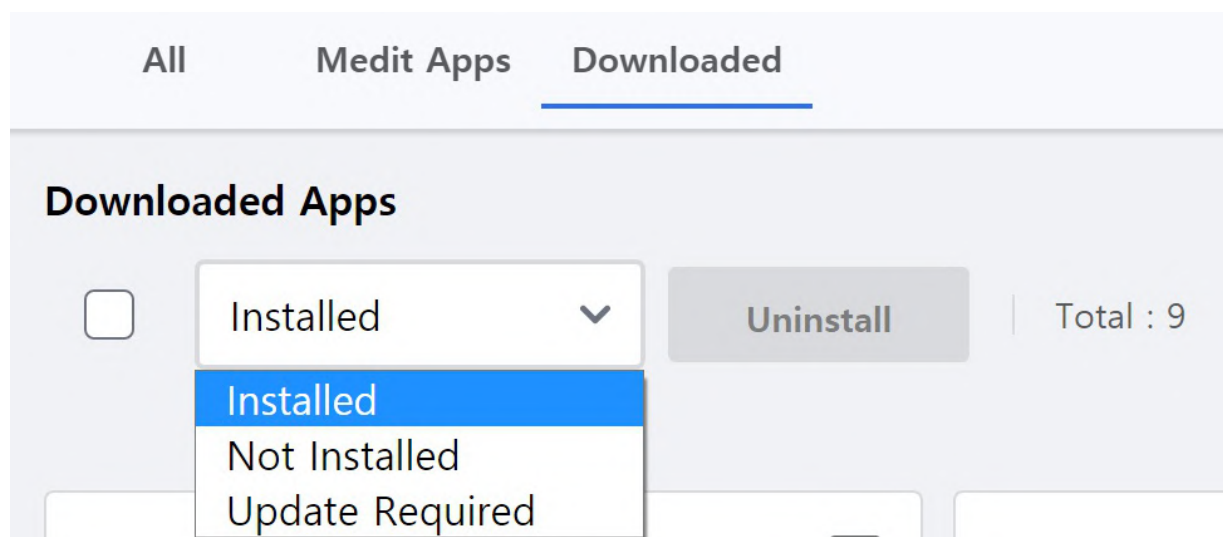

- **Đã cài đặt:** Tùy chọn này chỉ hiển thị các ứng dụng được cài đặt trên PC mà người dùng hiện đang đăng nhập vào.
- **Chưa cài đặt:** Tùy chọn này cho phép bạn xem các ứng dụng bạn đã cài đặt trên PC khác để bạn có thể nhanh chóng cài đặt chúng.
- **Yêu cầu cập nhật:** Tùy chọn này chỉ hiển thị các ứng dụng cần cập nhật mà đã được cài đặt trên PC hiện tại.

Trash Box

Trash Box lưu trữ tạm thời các ca đã xóa. Mọi ca trong Trash Box đều có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

Chú ý

Dữ liệu đã xóa khỏi Trash Box sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy tính và máy chủ của bạn và không thể khôi phục được.

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Case Synchronization Manager

Case Synchronization Manager giúp bạn tải lên và tải xuống ca hiệu quả. Bạn có thể tải nhiều ca lên đám mây hoặc tải chúng xuống máy tính cục bộ của bạn. Bạn chỉ cần tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc ngày để xác định ca cần đồng bộ.

Case Synchronization Manager

Upload		Download					
All		Case Name Case Name / Contains					
Total Cases: 210		☒ No Date Data Type All					
☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status			
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required			
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required			
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required			
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required			
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required			
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required			
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required			
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required			
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required			
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required			
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required			

Close

Tải lên

 Upload	Tải lên ca đã chọn.
 Cancel	Hủy tải lên ca đã chọn.
 Retry	Thử tải lên lại nếu tải lên ca không thành công.

Tải xuống

 Download	Tải xuống ca đã chọn.
 Cancel	Hủy tải xuống ca đã chọn.
 Retry	Thử tải xuống lại nếu tải xuống ca không thành công.

Website liên quan

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các menu chỉ có trên trang web Medit Link, chẳng hạn như My Info, Partners và Membership. Vui lòng tham khảo Medit Link > Trang web Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) và [My Info](#) để xem mô tả chi tiết về các menu trong trang web Medit Link.

Bạn có thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến của Medit, Medit Shop, nơi bạn có thể mua gói bảo hành mở rộng cho máy quét và các sản phẩm khác của Medit, chẳng hạn như ba lô đựng máy quét.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều thông tin khác nhau về việc sử dụng Medit Link. Truy cập vào các tài nguyên đào tạo và thông tin của Medit, chẳng hạn như Trung tâm hỗ trợ Medit, kênh YouTube Medit Academy và nền tảng đào tạo trực tuyến Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

File Viewer

File Viewer nhóm và hiển thị nhiều loại dữ liệu, bao gồm dữ liệu thu được từ các chương trình liên kết với Medit Link và dữ liệu mà người dùng đính kèm.



Công cụ này có các chức năng quản lý cơ bản như hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ và xóa dữ liệu.

File Viewer hỗ trợ các định dạng tệp sau:

- Dữ liệu 3D: STL, OBJ, PLY
- Hình ảnh 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Tệp video: MKV, MP4, AVI, WMV

Cây dữ liệu

Bạn có thể nhóm và hiển thị tất cả dữ liệu của ca trong cây dữ liệu. Bạn cũng có thể hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ trong và xóa dữ liệu khỏi cây dữ liệu.

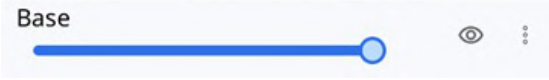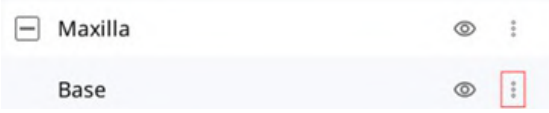
	Hiện/ Ẩn	Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu.
	Độ mờ	Thanh trượt xuất hiện khi bạn nhấp vào một trong các dữ liệu trên cây dữ liệu. Bạn có thể di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ mờ của dữ liệu được hiển thị. 
	Xem thêm	Nhấp vào biểu tượng Xem thêm sẽ hiển thị các tính năng bổ sung có sẵn.  • Chỉ hiển thị mục này: Ẩn toàn bộ dữ liệu khác nhưng chỉ hiển thị dữ liệu tương ứng. • Ẩn: Ẩn dữ liệu. • Sao chép: Sao chép dữ liệu và thêm vào nhóm đính kèm. • Xuất: Xuất tệp đã chọn. • Đổi tên: Thay đổi tên của dữ liệu. • Xóa: Xóa dữ liệu.



Lưu ý

Bạn có thể đổi tên dữ liệu khi trực tuyến.

Công cụ điều khiển mô hình

Điều khiển mô hình 3D

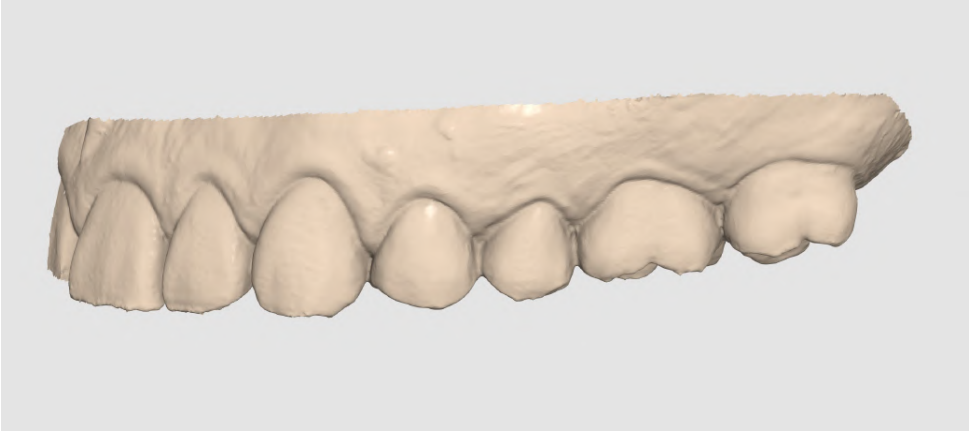+	Di chuyển	Di chuyển mô hình.
↺	Xoay	Xoay mô hình.
🔍	Phóng to/thu nhỏ	Phóng to và thu nhỏ mô hình.
🔍	Thu phóng vừa màn hình	Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
🌈	Bóng	Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện bóng (Kết xuất PBR). 
🌈	Chế độ hiển thị dữ liệu Lì	Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện lì (Kết xuất Phong). 
●	Đơn sắc	Xem dữ liệu ở dạng đơn sắc. 

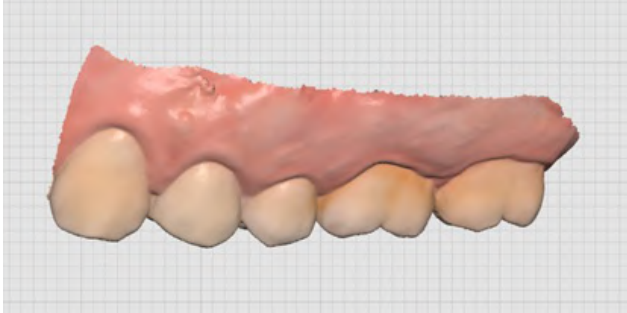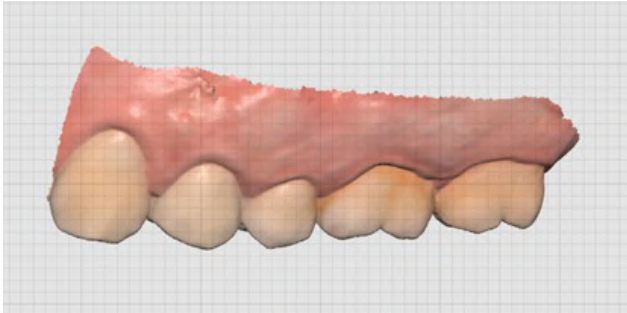	Cài đặt lưới (mm)	Bật lưới	Hiển thị lưới trong nền. 
		Tắt lưới	Ẩn lưới trong nền.
		Bật lớp phủ	Phủ lưới lên trên mô hình. 

Điều khiển hình ảnh 2D


	Hình ảnh tiếp/trước	Di chuyển giữa các hình ảnh.
	Chỉnh sửa	Chỉnh sửa hình ảnh.
	Kẹp/dán cửa sổ	Bạn có thể tách cửa sổ hình ảnh và điều chỉnh đến vị trí mong muốn. Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ. Cửa sổ sẽ trở về kích thước mặc định khi được khôi phục về vị trí ban đầu.

Công cụ chức năng

Chụp ảnh và ghi chú


Chụp màn hình hiện tại dưới dạng hình ảnh 2D, vẽ lên hình ảnh hoặc thêm ghi chú.


Bạn có thể lưu hình ảnh thành tệp kèm theo ghi chú và gửi dưới dạng tài liệu tham khảo.

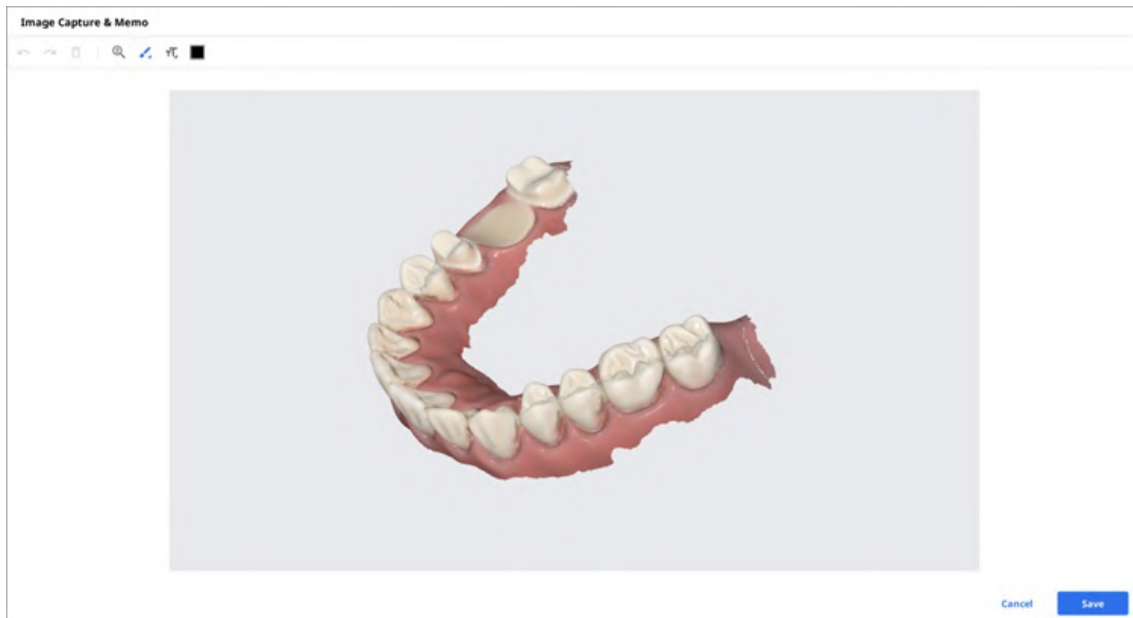

Chụp chỉnh nha

Chụp hình ảnh theo hướng quan sát hiện tại và trên/dưới/trái/phải so với hướng quan sát hiện tại.

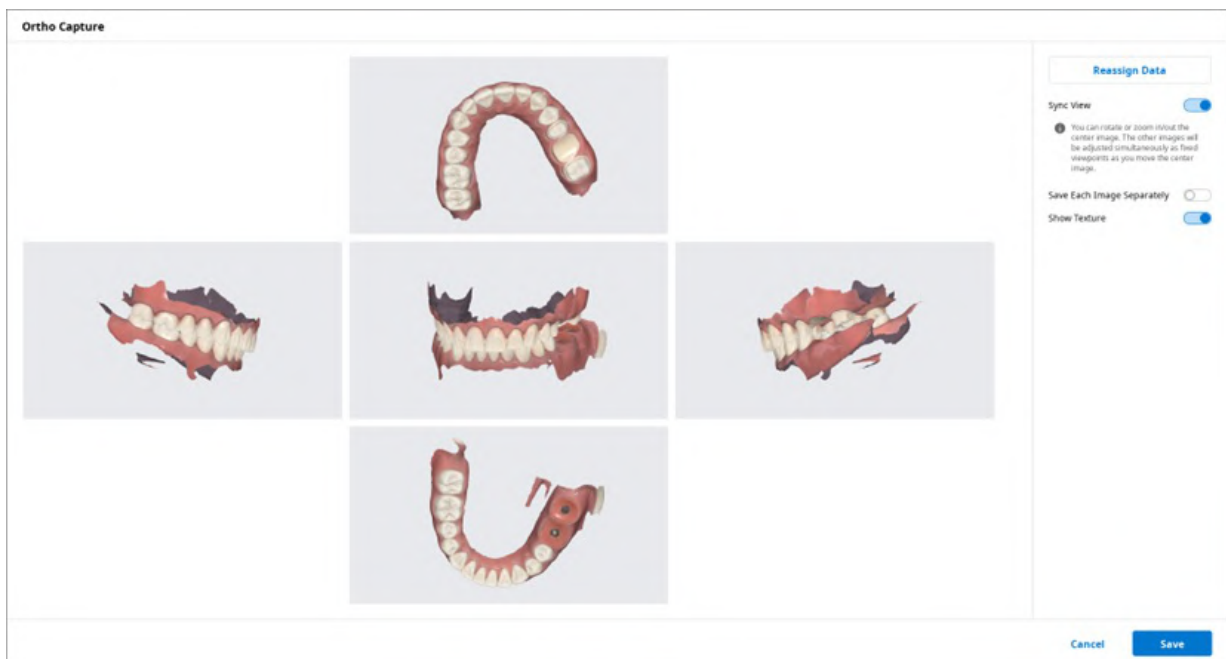

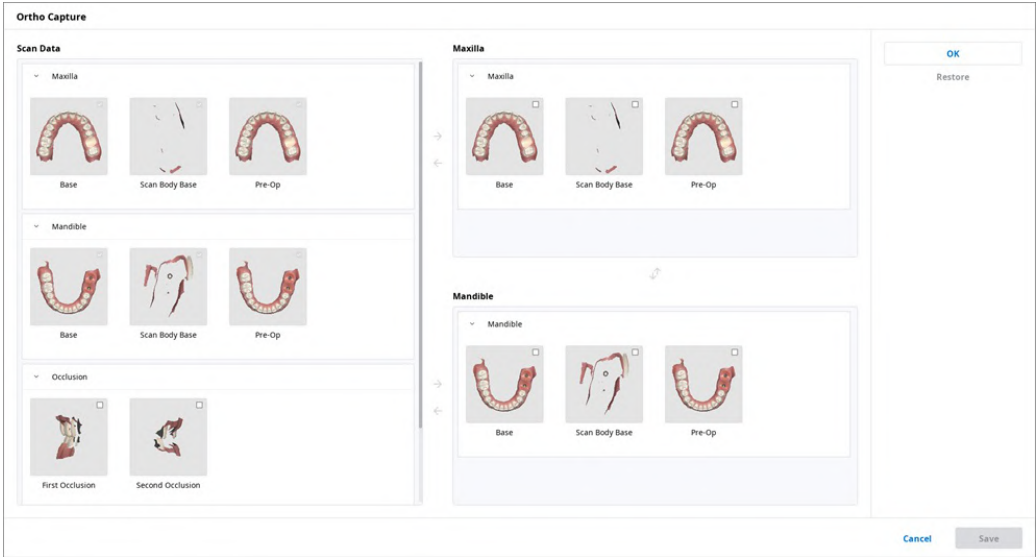Đồng bộ chế độ xem	Khi bật, bạn có thể xoay hoặc phóng to/thu nhỏ hình ảnh trung tâm. Các hình ảnh còn lại sẽ được điều chỉnh đồng thời theo các góc quan sát cố định khi bạn di chuyển hình ảnh trung tâm. Khi tắt, bạn có thể di chuyển, xoay hoặc phóng to/thu nhỏ tất cả hình ảnh riêng lẻ.
Lưu riêng từng hình ảnh	Lưu từng hình ảnh ở độ phân giải cao.
Hiện kết cấu	Bật/tắt kết cấu cho mô hình.
Chỉ định lại dữ liệu	Thay đổi dữ liệu cho hàm trên/hàm dưới bằng tính năng Chỉ định lại dữ liệu. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đã thay đổi để tạo và sử dụng hình ảnh thu được từ Chụp chỉnh nha.  • Dữ liệu quét: Toàn bộ dữ liệu quét của ca đều hiển thị. • Hàm trên: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm trên được hiển thị. • Hàm dưới: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm dưới được hiển thị.


Làm đầy lỗ

Làm đầy lỗ trong dữ liệu lưới 3D.



Cắt


Tính năng cắt cung cấp nhiều công cụ khác nhau để chỉnh sửa dữ liệu.

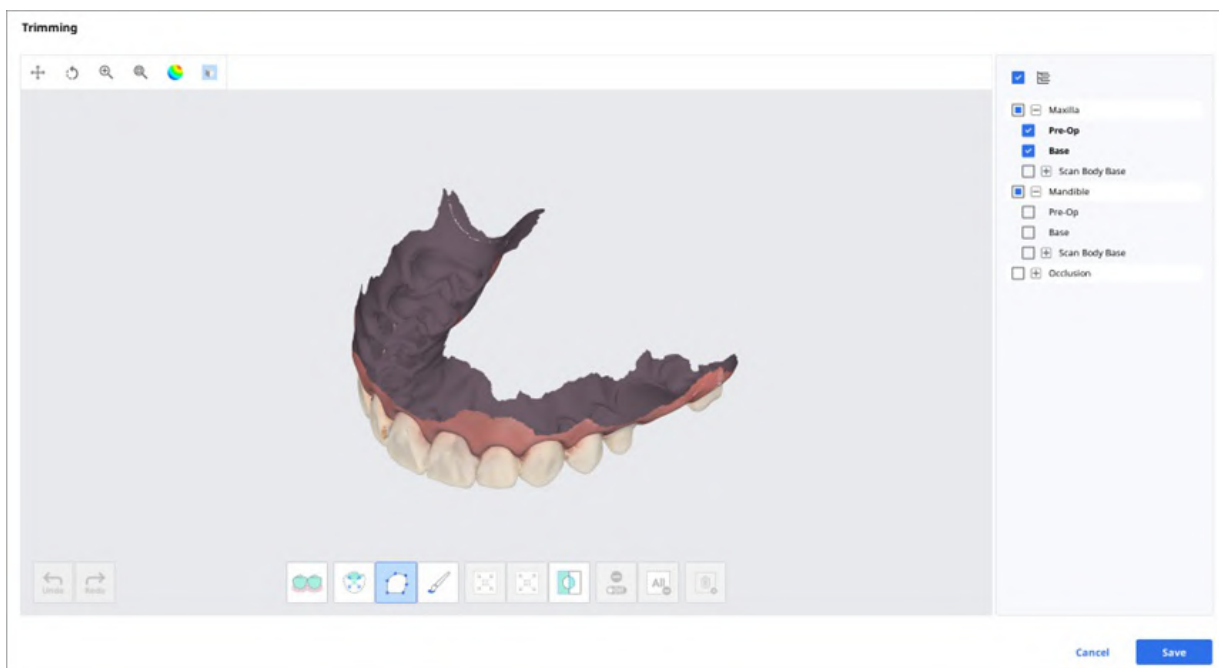

Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu lưới 3D đã chọn bằng các công cụ khác nhau nằm ở dưới cùng cửa sổ.

Chọn		Chọn răng thông minh	Tự động chọn tất cả răng trên hàm, bỏ qua phần nướu.  Lưu ý Chức năng này chỉ khả dụng đối với dữ liệu quét thu được bằng Medit Scan for Clinics khi bật tùy chọn "Sử dụng GPU".
		Chọn một răng thông minh	Tự động chọn phạm vi một chiếc răng với một cú nhấp chuột. Bạn có thể nhấp hoặc kéo vào răng.
		Chọn bằng hình đa tuyến	Chọn tất cả các thực thể trong một hình đa tuyến được vẽ trên màn hình.
		Chọn bằng cọ vẽ	Chọn tất cả thực thể trên một đường vẽ tự do trên màn hình. Chỉ phần mặt trước mới được chọn. Cọ vẽ có ba kích cỡ khác nhau.
Điều chỉnh vùng đã chọn		Thu nhỏ vùng đã chọn	Thu nhỏ vùng đã chọn mỗi lần bạn nhấn nút.
		Mở rộng vùng đã chọn	Mở rộng vùng đã chọn mỗi lần bạn nhấn nút.
		Đảo ngược vùng đã chọn	Đảo ngược lựa chọn.
Bỏ chọn		Chọn/Bỏ chọn	Khi bật, bỏ chọn vùng bằng nhiều công cụ khác nhau.
		Xóa tất cả lựa chọn	Xóa tất cả vùng đã chọn.
		Xóa vùng đã chọn	Xóa dữ liệu khỏi vùng đã chọn.

1. Chọn vùng bạn muốn cắt bằng các công cụ chọn vùng.

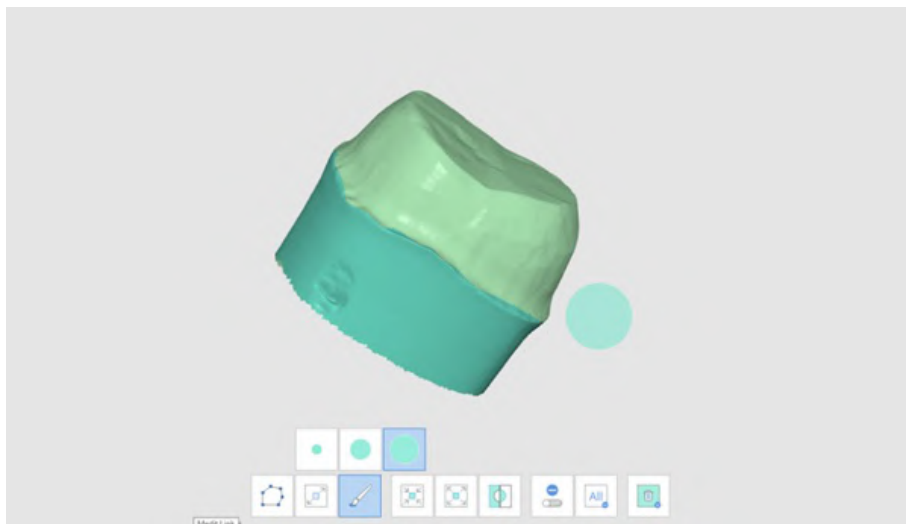


Lưu ý


Công cụ cắt đa tuyến chọn tất cả các thực thể trong hình đa tuyến được vẽ trên màn hình, còn công cụ cắt bằng cộ vẽ chỉ chọn dữ liệu mặt trước.

2. Bạn có thể đảo ngược, thu nhỏ hoặc mở rộng vùng đã chọn bằng ba công cụ sau.


- Đảo ngược vùng đã chọn

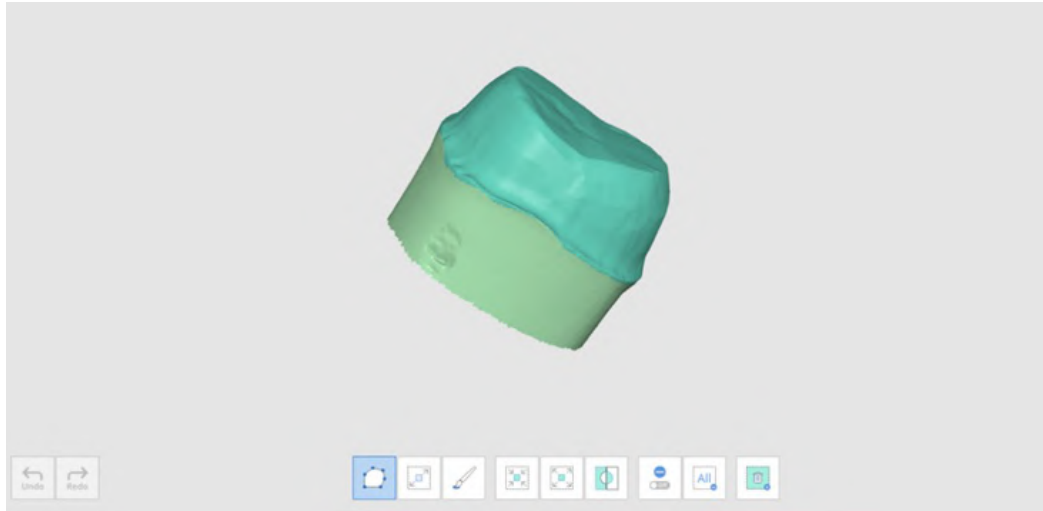

- Thu nhỏ vùng đã chọn

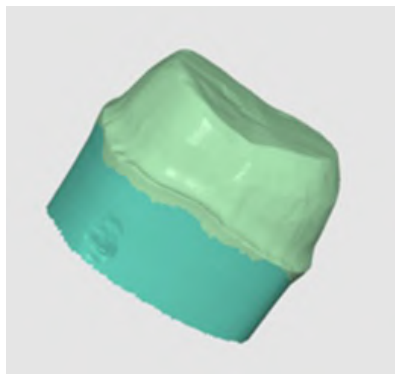


- Mở rộng vùng đã chọn

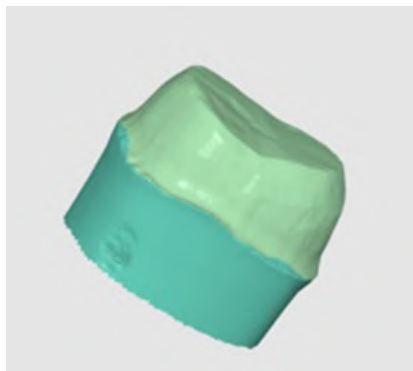



3. Bạn có thể bỏ chọn các vùng đã chọn bằng công cụ Xóa vùng đã chọn.

Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cần

Tối ưu hóa căn chỉnh khớp cắn. Bạn có thể chọn dữ liệu đích và điều chỉnh việc căn chỉnh khớp cắn.

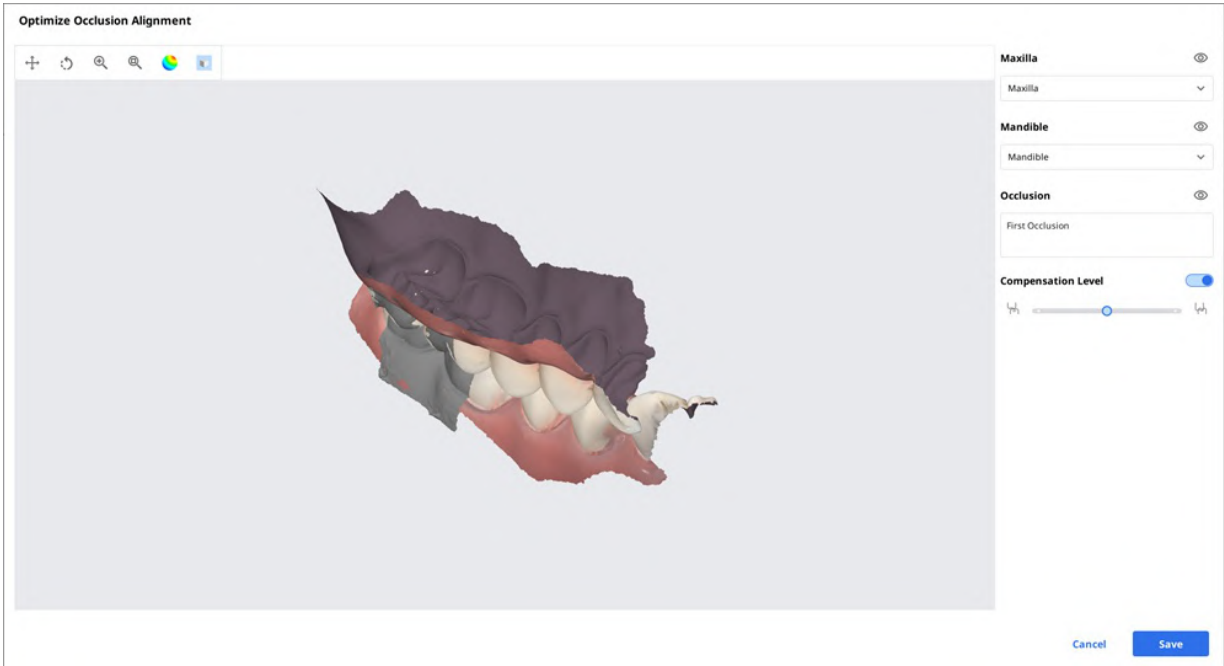


Mức bù

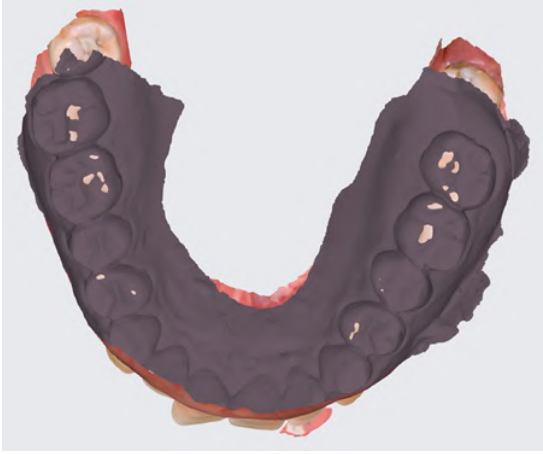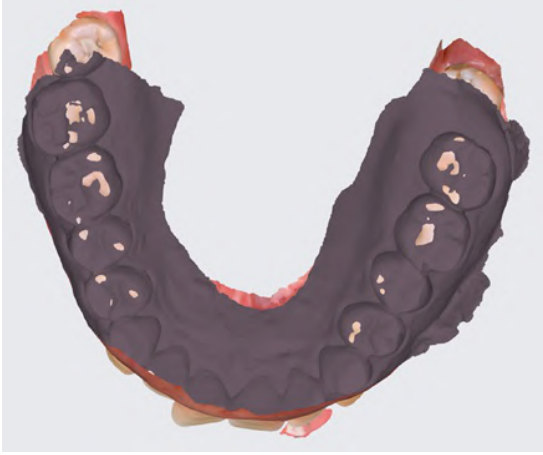Thấp	Compensation Level  	
Trung bình	Compensation Level  	
Cao	Compensation Level  	
Tắt	Compensation Level  	

Chuyển động hàm dưới

Bạn có thể phát các chuyển động của hàm dưới được ghi lại trong Medit Scan for Clinics để xem tiếp xúc khớp cắn động giữa răng trên và răng dưới.

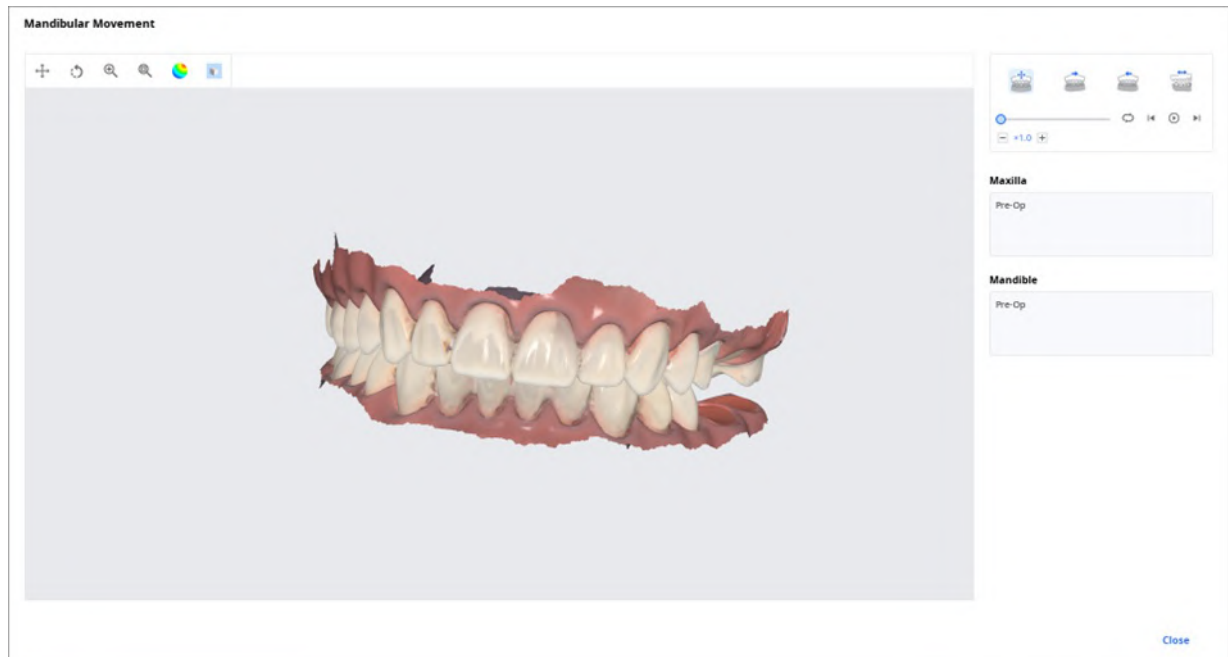

	Chuyển động tự do	Phát bản ghi lại chuyển động tự do của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên trái	Phát bản ghi lại chuyển động sang trái của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên phải	Phát bản ghi lại chuyển động sang phải của hàm dưới.
	Chuyển động ra trước	Phát bản ghi lại chuyển động về phía trước của hàm dưới.

Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer

Bạn có thể nhận được nhiều kết quả dữ liệu khớp cắn từ Ứng dụng Medit Scan.

Medit Link cung cấp chức năng quản lý kết quả thông qua "File Viewer".

Cách quản lý nhiều kết quả


Khi người dùng nhận được nhiều kết quả khớp cắn từ Medit Scan for Clinics, Medit Link cung cấp tùy chọn để chọn một kết quả.

Danh sách kết quả được liệt kê theo tên và bạn có thể chọn một mục.

Mô hình đã chọn sẽ hiển thị trong "Cây dữ liệu" và "Khu vực hiển thị mô hình".



Bạn có thể thu gọn danh sách và thay đổi mục bằng biểu tượng mũi tên.

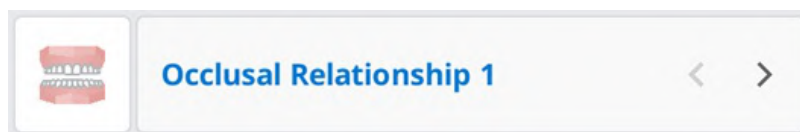

Tùy chọn hiển thị

Bạn có thể thay đổi Tùy chọn hiển thị để tùy chỉnh bố cục của danh sách ca trong Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Bộ lọc trạng thái

Hiển thị hoặc ẩn từng bộ lọc thể hiện trạng thái của ca. Bộ lọc trạng thái bị ẩn không hiển thị trên màn hình trong Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ca cần thiết bằng bộ lọc trạng thái.

- Bạn có thể nhấp vào trạng thái bạn muốn xem để chỉ hiển thị các ca ở trạng thái đó.
- Bạn có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn lọc sau:

Hộp	Bộ lọc trạng thái
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Mục trong bảng

Chọn các mục để hiển thị trong danh sách ca tại Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Bạn có thể thay đổi thứ tự các mục trong bảng hoặc điều chỉnh độ rộng cột của bảng trong chế độ hiển thị dạng danh sách để tối ưu hóa môi trường người dùng đến mức tốt nhất.

Mỗi hộp sẽ có các mục trong bảng sau:

Hộp	Mục trong bảng
Patient	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Giới tính / Số lượng ca / Ngày đăng ký / Ngày sinh / Ngày quét gần nhất
Case Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày sinh / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
Order Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng
In Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám
Work Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày quét / Tên phòng khám / Ngày đặt hàng

Loại chế độ xem

Thay đổi loại chế độ hiển thị giữa Chế độ xem thư viện và Chế độ xem danh sách trên Case Box.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn loại chế độ hiển thị sau:

Hộp	Loại chế độ xem
Patient	Chế độ xem danh sách
Case Box	Chế độ xem danh sách / Chế độ xem thư viện
Order Box	Chế độ xem danh sách
In Box	Chế độ xem danh sách
Work Box	Chế độ xem danh sách

Nhóm

Chọn tùy chọn nhóm để phân loại và sắp xếp lại các ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn nhóm sau:

Hộp	Tùy chọn nhóm
Case Box	Không / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng
Order Box	Không / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
In Box	Không / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
Work Box	Không / Ngày yêu cầu giao hàng



Patient, Case Talk và Trash Box không có tùy chọn nhóm.

Sắp xếp

Chọn tùy chọn sắp xếp để thay đổi thứ tự ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn sắp xếp sau:

Hộp	Nhóm	Tùy chọn sắp xếp
Patient	-	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Ngày sinh / Ngày đăng ký / Số lượng ca / Ngày quét gần nhất
Case Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Tên bệnh nhân	Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Tên phòng lab
Order Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
In Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Tên phòng khám
Work Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám


Lưu ý

Case Talk và Trash Box không có tùy chọn sắp xếp.

Lọc và Tìm kiếm

Lọc theo bệnh nhân

Lọc và hiển thị ca theo tên bệnh nhân. Bạn có thể tạo danh sách bằng cách lọc riêng ra những bệnh nhân cần thăm khám.

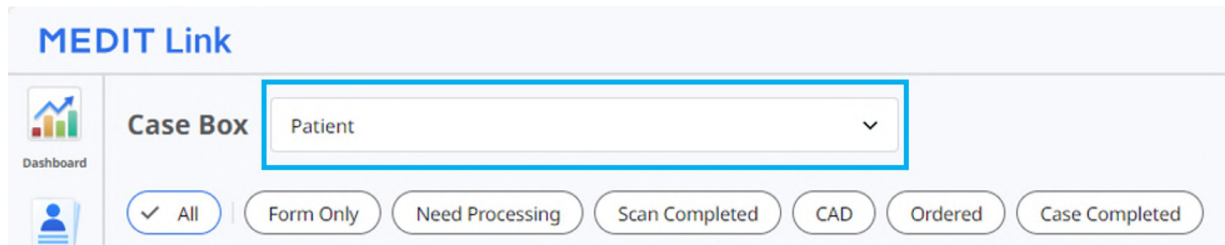


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

1. Nhập tên bệnh nhân.

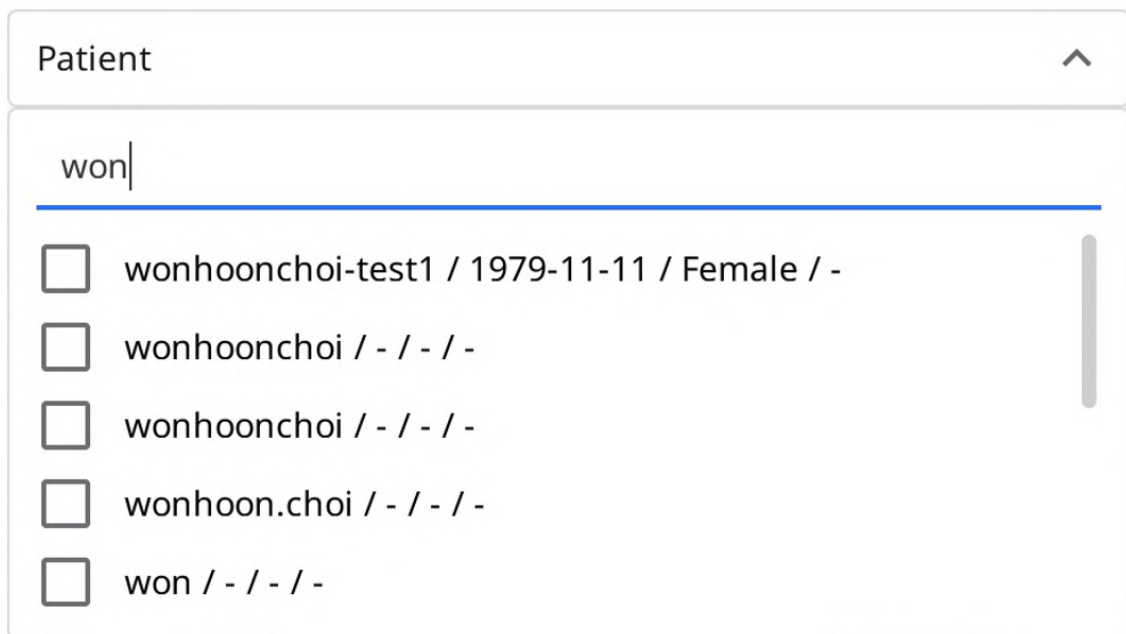

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Chọn bệnh nhân trong danh sách kết quả tìm kiếm bên dưới.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trên danh sách.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Total Cases: 20

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Lọc theo ngày

Lọc và hiển thị những ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Chọn khoảng thời gian từ danh sách.

- Tất cả: Hiển thị tất cả các ca.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc để hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đó.
- Hôm nay: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong hôm nay.
- Hôm qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối vào hôm qua.
- 7 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- 30 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 30 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- Tháng này: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong tháng này.
- Tháng trước: Hiển thị các ca được sửa đổi vào tháng trước.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Chức năng tìm kiếm nâng cao

Tận dụng các chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm được thông tin bạn cần.

All

▼

Search / Contains

🔍

Mỗi hộp sẽ có các Tiêu chí tìm kiếm như sau:

Patient	Tất cả, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân
Case Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng lab
Order Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab, ID đơn hàng
In Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Work Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Case Talk	Tên Case Talk (Chứa), Tên bệnh nhân (Bằng)
Trash Box (Phòng khám)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng lab, Người xóa
Trash Box (Phòng lab)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, Người xóa

Bạn có thể chọn Tiêu chí tìm kiếm và chọn logic Chứa hoặc Bằng.

All

▼

All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca

Tạo ca

Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

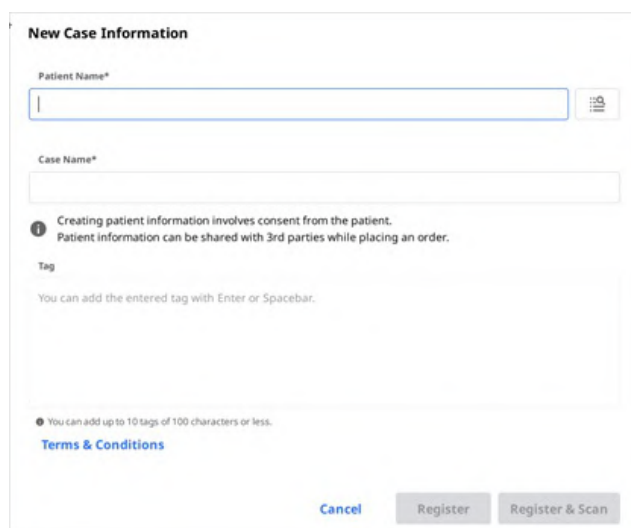

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)


Cancel Register Register & Scan

2. Nhập thông tin cơ bản như tên bệnh nhân và tên ca.

- Nếu bạn nhập tên không có trong danh sách bệnh nhân thì bệnh nhân mới sẽ được thêm vào.
- Nếu bạn nhập tên đã có trong danh sách bệnh nhân thì bạn có thể chọn tên đó từ danh sách.
- Nếu bạn đăng ký ca cho bệnh nhân hiện có, hãy nhấp vào biểu tượng Danh sách bệnh nhân để chọn bệnh nhân hiện có.



- Bạn có thể đăng ký bệnh nhân mới hoặc chỉnh sửa thông tin của bệnh nhân hiện có trong hộp thoại Danh sách bệnh nhân.

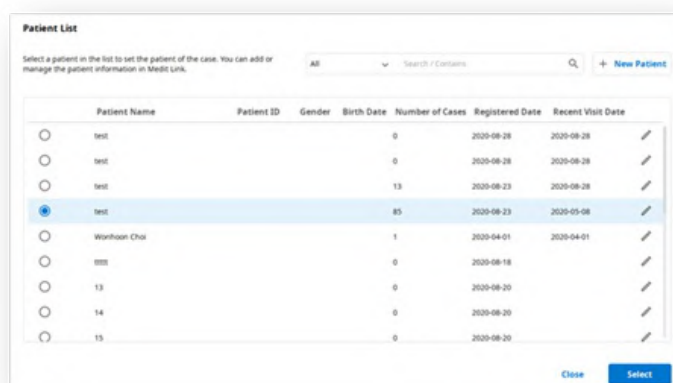

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	✎
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	✎
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	✎
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	✎
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	✎
☐	test				0	2020-08-18		✎
☐	13				0	2020-08-20		✎
☐	14				0	2020-08-20		✎
☐	15				0	2020-08-20		✎

Close Select

3. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.
4. Nhấp vào "Đăng ký & Quét" để hoàn tất quy trình đăng ký và tiến hành quét.
 - **Đăng ký:** Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính. Tính năng này rất hữu ích khi đăng ký nhiều ca.

- **Đăng ký & Quét:** Di chuyển đến tab Mẫu để đăng ký thông tin mẫu cho ca.

Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Nhập hoặc chọn tên phòng khám.
3. Nhập tên bệnh nhân và tên ca. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.
4. Nhập ngày giao dự kiến dựa trên ngày hoàn thành công việc.
5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính sau khi đăng ký ca.

Chỉnh sửa ca

Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

2. Nhấp vào biểu tượng "Tìm kiếm" để đổi tên bệnh nhân. Xin lưu ý rằng bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa tên.; thay vào đó, bạn có thể tìm tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại và có thể chỉnh sửa thông tin bệnh nhân từ danh sách.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Kiểm tra tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại.
4. Để tạo bệnh nhân mới, hãy nhấn nút "Bệnh nhân mới".
5. Sử dụng nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin về bệnh nhân đã đăng ký.
6. Nhấp vào "Áp dụng" để hoàn tất quy trình.

Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Nhấp vào "Áp dụng" sau khi chỉnh sửa xong.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa thông tin của các ca đã nhận qua đặt hàng trong In Box.

Sao chép ca

Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Bạn sẽ được hỏi về loại thông tin bạn muốn sao chép vào ca mới.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Chọn chỉ sao chép thông tin mẫu hoặc tất cả dữ liệu.
4. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.

Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Sao chép tất cả dữ liệu để tạo một ca mới.
3. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.


Xóa ca

Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Xóa".



2. Nhấp vào "OK" để xóa ca.

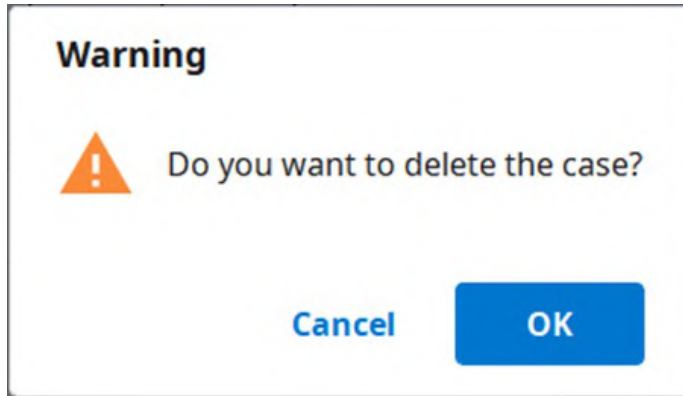

3. Ca đã xóa sẽ được chuyển vào Trash Box và có thể được khôi phục nếu cần.

Thông tin mẫu

Bạn có thể nhập thông tin mẫu dựa trên chương trình đã kết nối và loại hình điều trị.

Thông tin bạn nhập sẽ được sử dụng làm thông tin cơ bản để thực hiện chương trình quét hoặc CAD và đặt hàng.

Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box

Nhập vào Tab Mẫu

1. Chọn xem bạn sẽ nhập thông tin điều trị theo răng hay hàm.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê đơn hàng.
3. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box

Nhập vào Tab Mẫu


1. Chọn chương trình quét muốn sử dụng.
2. Chọn một trong các tùy chọn sau để xác định chiến lược quét: Răng/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Phương pháp có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quét đã chọn.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Răng	O	O
Hàm	O	O
Flexible Multi-Die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Chọn số răng, hàm hoặc die cho quy trình quét.
5. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê.
6. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Nối răng thành cầu

Bạn có thể nối nhiều răng lại thành một cầu răng khi áp dụng cùng một vật liệu cho nhiều răng liền kề. Nhấp vào biểu tượng cầu bên cạnh các răng đã chọn để nối hoặc bỏ nối các răng này.

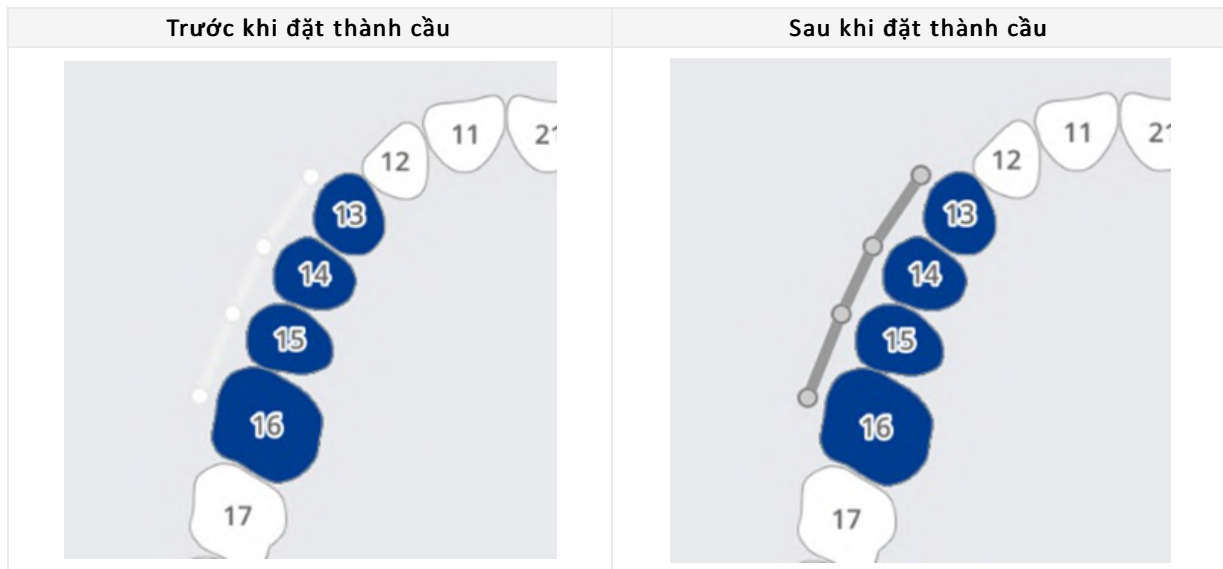

Cài đặt tùy chọn quét

Bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn quét khác nhau tùy thuộc vào chương trình đang sử dụng.

Các tùy chọn quét đã chọn sẽ được chuyển đến từng chương trình quét.

Medit Scan for Labs

Tùy chọn chung

	Răng liền kề	Đánh dấu các răng đã sửa soạn và răng liền kề rồi chuyển thông tin này đến chương trình quét.
	Răng đối xứng	Tự động đánh dấu đối xứng rồi chuyển thông tin này tới chương trình quét.
	Giá khớp	Hiển thị tùy chọn chọn giá khớp trong chương trình quét.
	Đánh dấu chuyển động	Cho phép sử dụng chiến lược quét "Chuyển động hàm" trong chương trình quét.

Tùy chọn theo răng

	Scan Body	Cho phép cài đặt chiến lược quét scan body trong chương trình quét.
	Quét trước phục hình	Cho phép cài đặt chiến lược quét mô hình trước phục hình trong chương trình quét.
	Quét răng sáp	Cho phép cài đặt chiến lược quét răng sáp trong chương trình quét.

Thêm vào yêu thích

Bạn có thể đăng ký một sản phẩm làm mục yêu thích để chọn nhanh sản phẩm đó.

Danh sách yêu thích đã đăng ký được quản lý dưới dạng mẫu và có thể được chia sẻ thông qua tính năng xuất và nhập.

Thêm vào yêu thích

1. Chọn số răng.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Bạn có thể đăng ký Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc làm mục yêu thích ngay cả khi không chọn toàn bộ.
3. Nhấp vào biểu tượng "Ngôi sao".

4. Tổ hợp tham số đã chọn, ngoại trừ số răng, đều nằm trong danh sách tìm kiếm yêu thích của bạn.

Quản lý mẫu yêu thích

Bạn có thể đăng ký, quản lý và chia sẻ các loại mẫu khác nhau.

Thêm	Thêm mẫu mới.
Đổi tên	Đổi tên mẫu hiện tại.
Xóa	Xóa mẫu hiện tại.
Xuất	Xuất mẫu hiện tại dưới dạng tệp.
Nhập	Nhập một tệp mẫu.

Thực hiện quét/CAD

Quy trình quét

Bạn tiến hành quét dựa trên thông tin đã nhập.

1. Nhập/lưu thông tin điều trị và chọn tùy chọn quét cần thiết.
2. Nhấp vào nút "Quét" ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Quy trình CAD


Medit Link cung cấp ứng dụng tích hợp DentalCAD để kết nối Medit Link với DentalCAD.

1. Cài đặt ứng dụng DentalCAD Integration trong App Box.
2. Truy cập chi tiết ca và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration trên Trình khởi chạy nhanh.
3. Chỉ định đường dẫn đến ứng dụng DentalCAD được cài đặt trên PC của bạn trong hộp thoại bật lên.
4. Nhập chi tiết ca của ca được quét và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration. Thao tác này sẽ bật lên hộp thoại để tạo tệp dentalProject.
5. Đăng ký thông tin mẫu cho DentalCAD và nhấp vào "Mở" để mở chương trình CAD.
6. Nếu bạn cài đặt ứng dụng DentalDB Integration, kết quả CAD sẽ tự động được gửi đến đường dẫn lưu đã chỉ định trong exocad. (Chỉ tài khoản phòng lab)


Sử dụng ứng dụng hỗ trợ

Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ

Bạn có thể trực tiếp chạy các ứng dụng hỗ trợ khác nhau bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng đã cài đặt trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng.

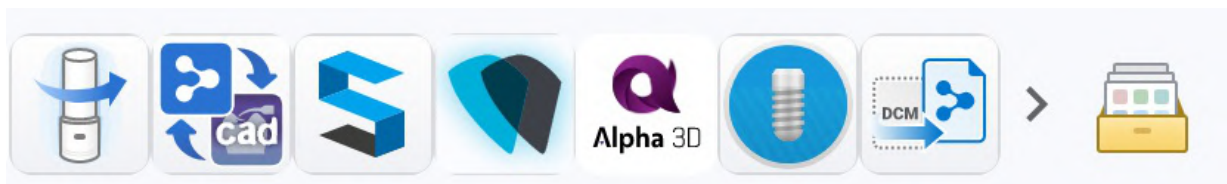

Quản lý trình khởi chạy ứng dụng

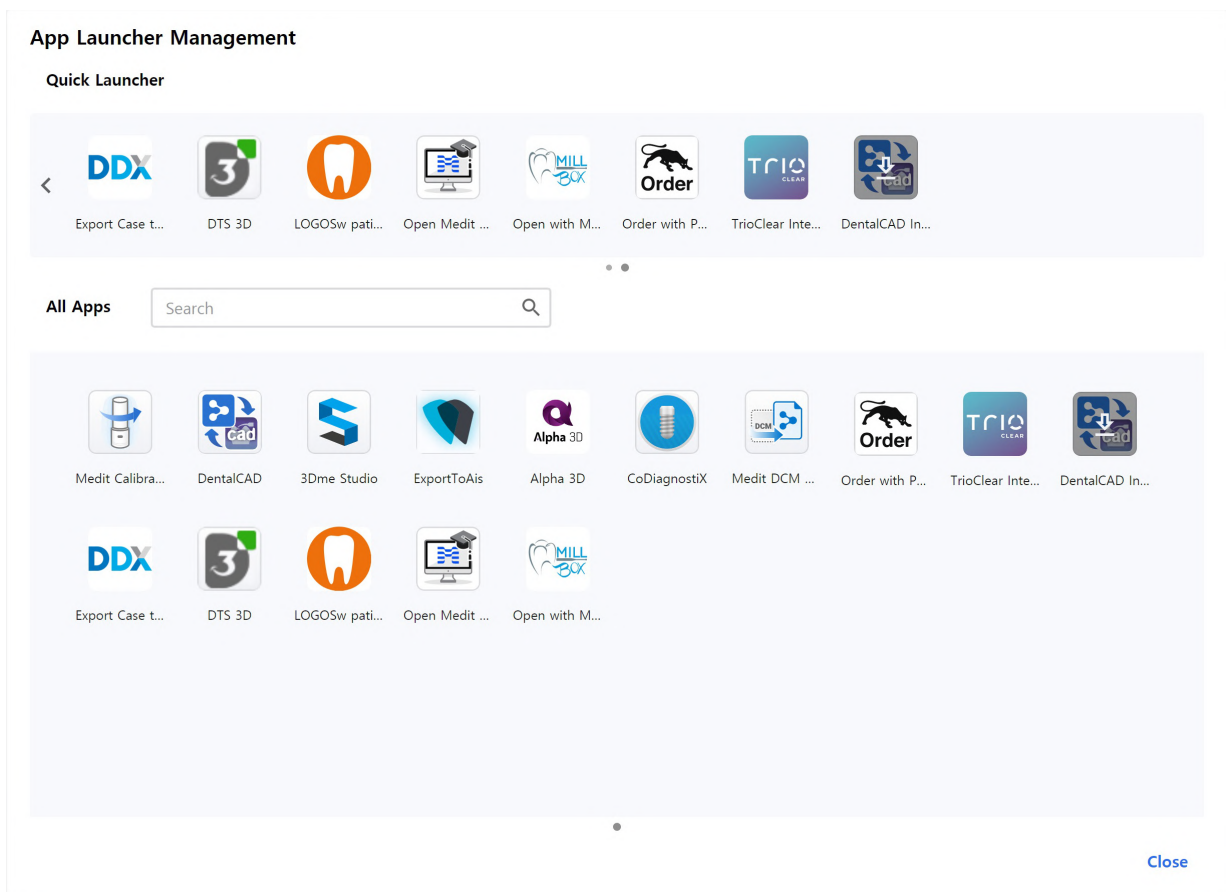

Trình khởi chạy nhanh

Bạn có thể xác định những ứng dụng hiển thị trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng hoặc bạn có thể tạo thư mục để nhóm các ứng dụng tương tự lại với nhau nhằm sắp xếp chúng.

Tất cả ứng dụng

Tất cả các ứng dụng bạn đã cài đặt sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng để thêm ứng dụng đó vào Trình khởi chạy nhanh. Khi nhấp chuột phải vào menu ngữ cảnh, bạn cũng có thể chọn chạy, cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Nhận tệp kết quả

Xuất tệp kết quả quét

Medit Link không chỉ cho phép chia sẻ kết quả với đối tác thông qua đặt hàng mà còn cho phép bạn lưu trữ tệp kết quả ở định dạng tệp mong muốn bằng chức năng xuất.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Xuất tệp đến	Chỉ định đường dẫn đến vị trí bạn muốn lưu trữ tệp kết quả.
Tên thư mục	Hệ thống tạo một thư mục mới và lưu trữ tất cả tệp kết quả trong đó. Tên thư mục mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên thư mục. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên thư mục.
Tên tệp	Đặt tên tệp nhận kết quả. Tên tệp mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên tệp. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên tệp
Loại	Chọn chương trình thiết kế bạn muốn sử dụng. Medit Link sẽ tự động điều chỉnh tệp theo lựa chọn của bạn để bạn tiếp tục thiết kế mà không cần căn chỉnh trực tiếp thêm.
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén tệp	Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất.
Kết hợp lưới riêng lẻ	Kết hợp kết quả của hàm trên hoặc hàm dưới với từng răng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn không thể nhập nhiều tệp vào một chương trình.
Xuất tất cả quan hệ khớp cắn	Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp cắn thì bạn có thể đồng thời xuất tất cả các kết quả này.
Lưu thông tin ca dưới dạng PDF	Lưu thông tin ca dưới dạng PDF kèm kết quả.

Xuất tệp kết quả từ danh sách ca

Bạn có thể sử dụng tùy chọn "Xuất" bên trên danh sách ca trong Case Box và Work Box để xuất đồng thời các tệp kết quả của một hoặc nhiều ca.

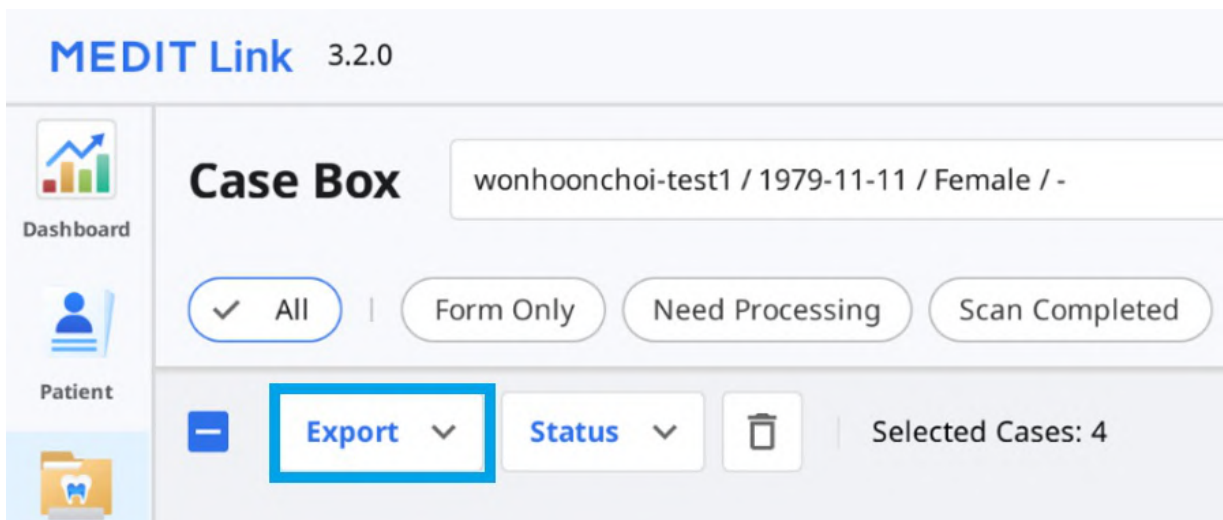

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Chọn từ danh sách tất cả các ca có tệp kết quả bạn muốn xuất.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Nhấp vào "Xuất" và chọn "Tập kết quả."

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Đặt thư mục đích, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Lưu ý

Không thể chỉnh sửa trường "Tên thư mục" và "Tên tệp" khi xuất tệp của nhiều ca.
 Tên thư mục và tên tệp được tạo tự động theo quy tắc bạn đã đặt cho tùy chọn "Quy tắc đặt tên thư mục" và "Quy tắc tên tệp" trong Cài đặt > Tùy chọn xuất.

- Nhấp vào "Xuất."
- Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

Question




Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Xuất tệp kết quả từ File Viewer

Bạn có thể sử dụng biểu tượng "Xuất" ở góc trên cùng bên phải của tab File Viewer để xuất tệp kết quả quét của một ca.

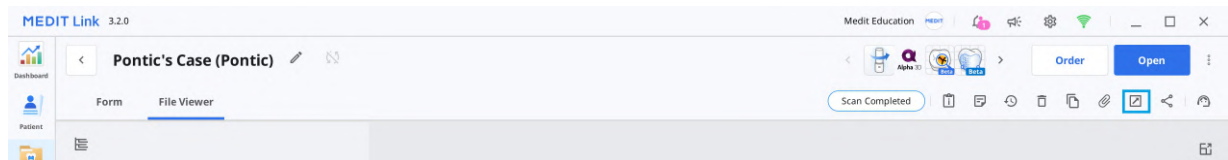

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.
3. Nhấp vào biểu tượng "Xuất" ở góc trên bên phải của tab File Viewer.



4. Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. Trong tab "Danh sách tệp", bạn có thể chọn các tệp cần thiết cho ca bằng cách bỏ chọn những tệp không cần thiết.

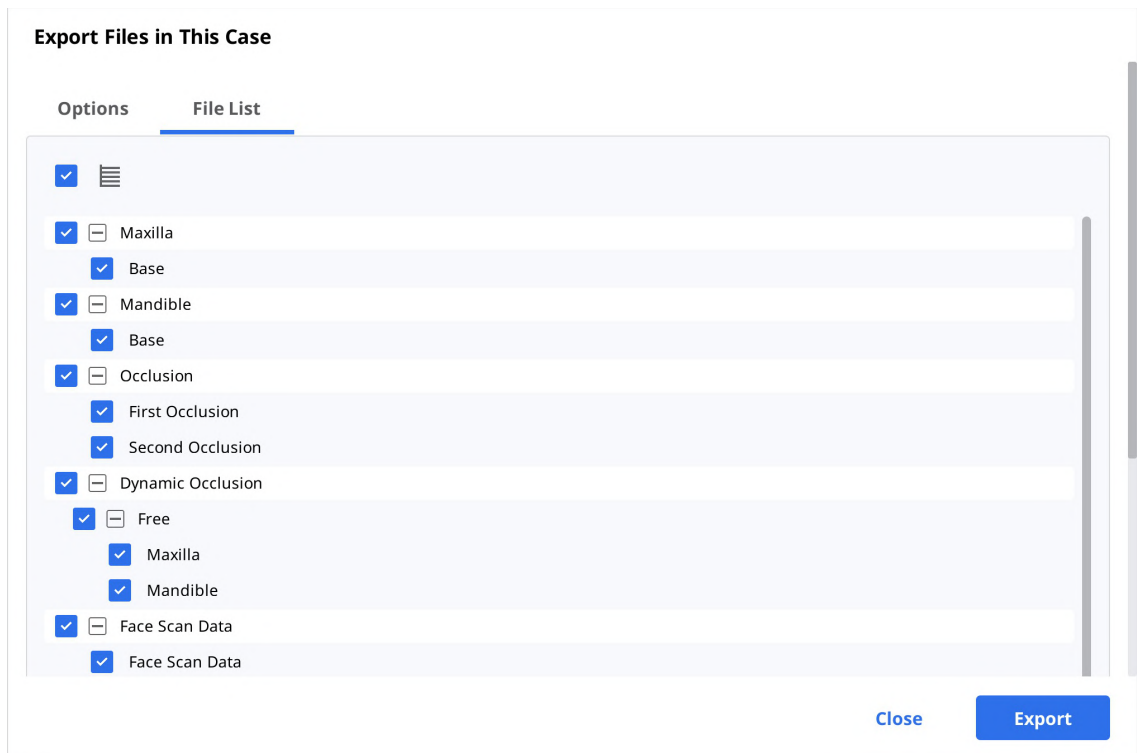


6. Nhấp vào "Xuất."
7. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

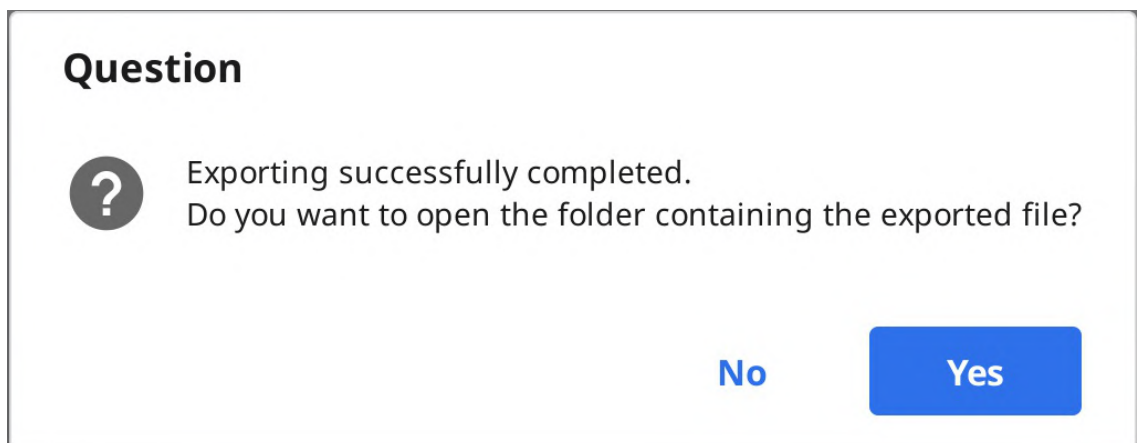

Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu


Bạn có thể xuất một hoặc nhiều tệp trong một nhóm dữ liệu cụ thể từ menu mở rộng trong file viewer.

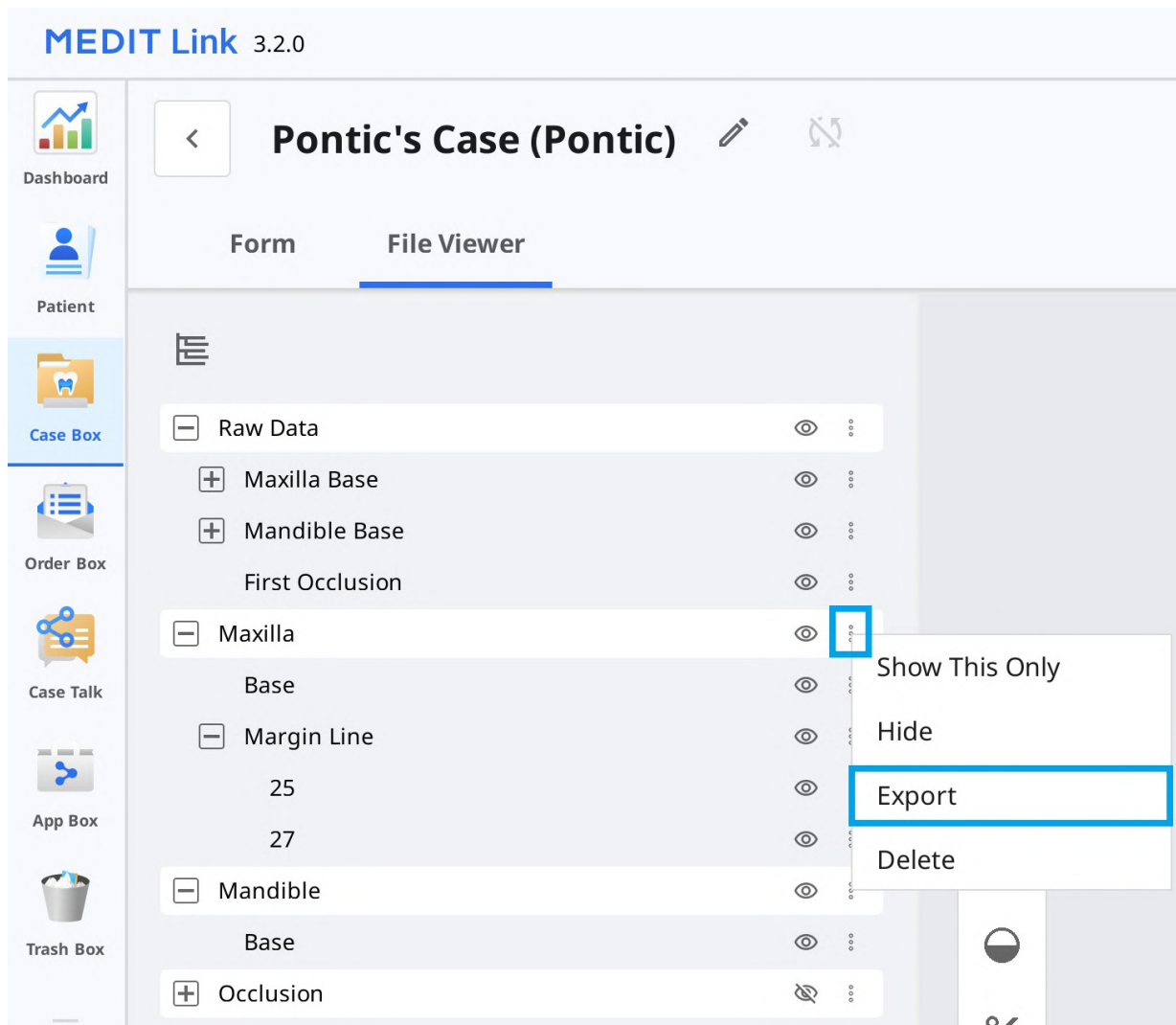

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.
3. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh nhóm dữ liệu hoặc thực thể trong cây dữ liệu trong tab File Viewer.



4. Sau đó nhấp vào "Xuất."

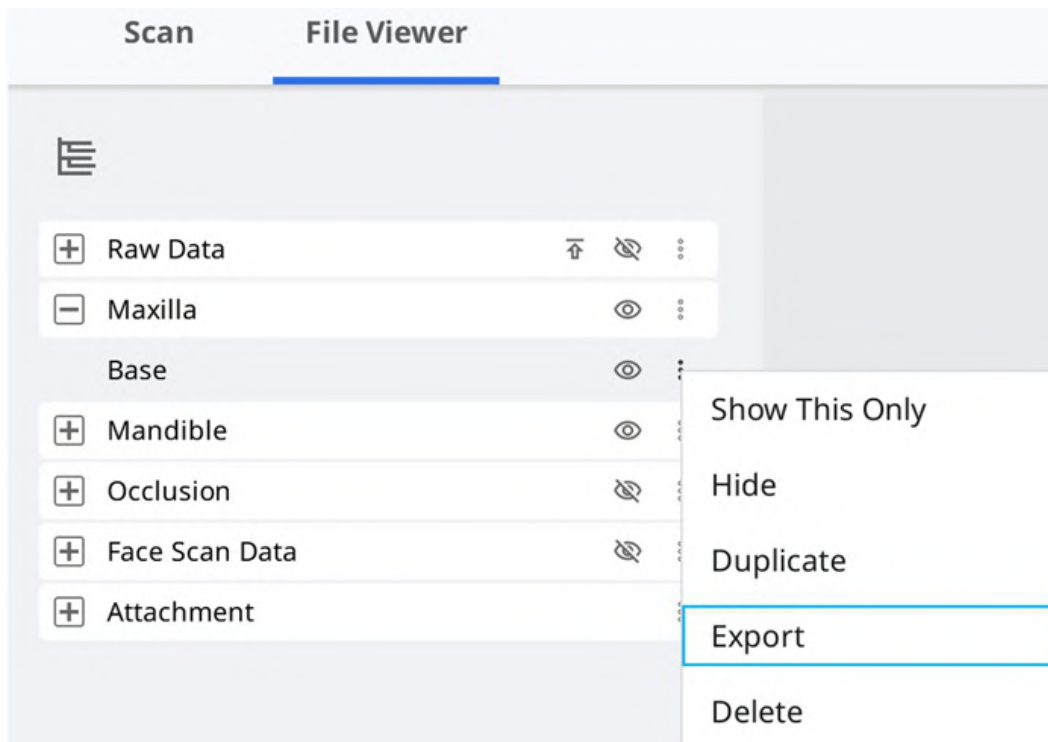

- Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close
Export

6. Bạn có thể thấy rằng chỉ những tệp bạn chọn trong cây dữ liệu là tệp được chọn trong Danh sách tệp.

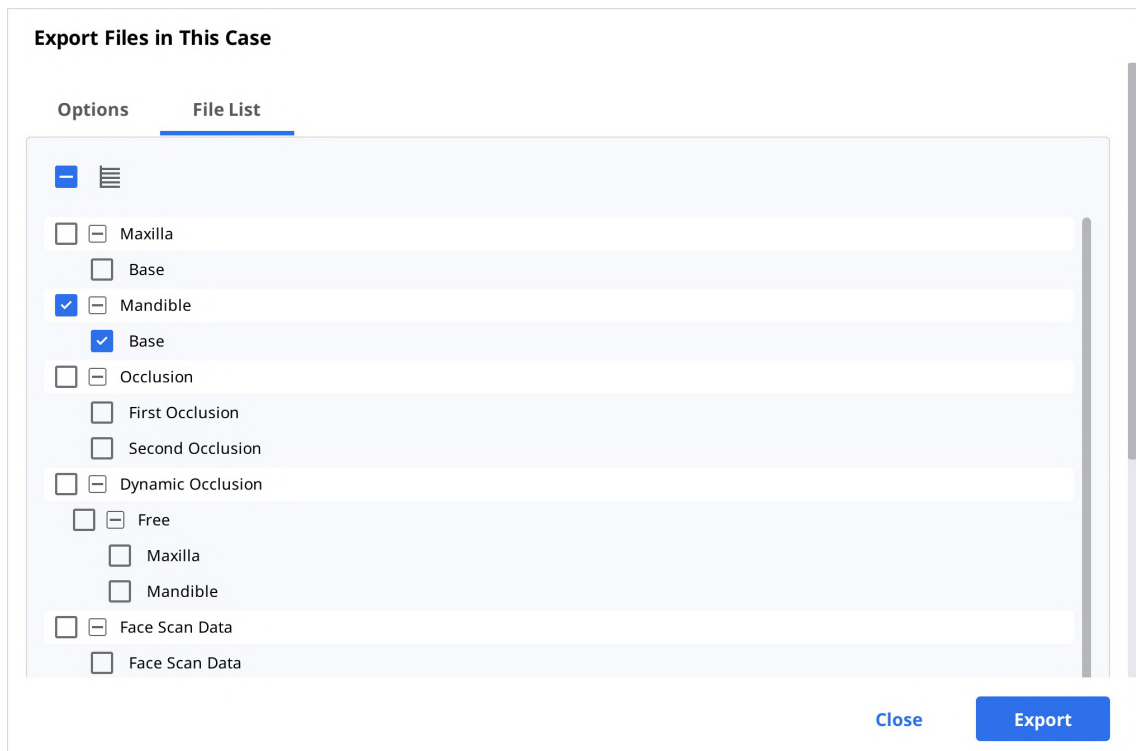

7. Nhấp vào "Xuất."

8. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

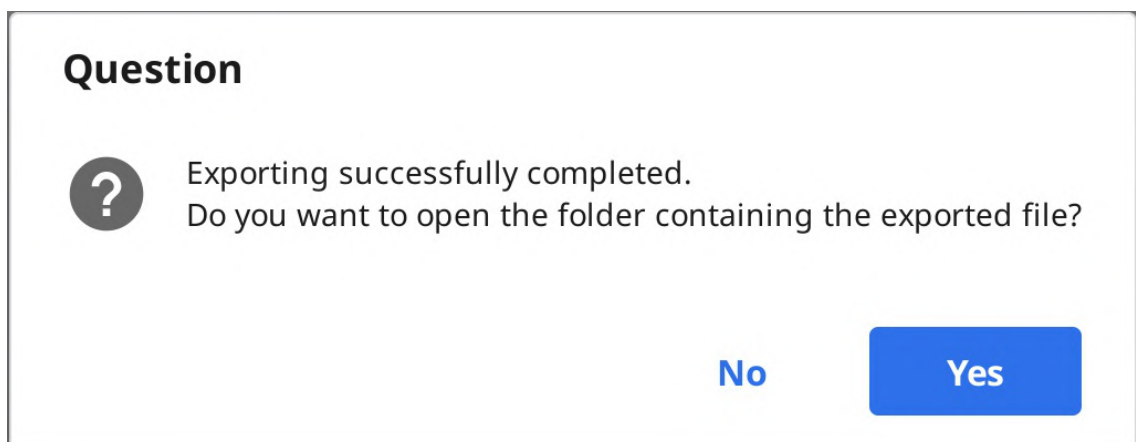


Xuất danh sách ca dưới dạng CSV


Medit Link cung cấp chức năng xuất danh sách ca ở định dạng CSV.

Bạn có thể xuất danh sách ca kèm thông tin cơ bản và dễ dàng quản lý ca.

1. Truy cập vào Case Box, Order Box, In Box, hoặc Work Box.
2. Chọn ca mà bạn muốn xuất.

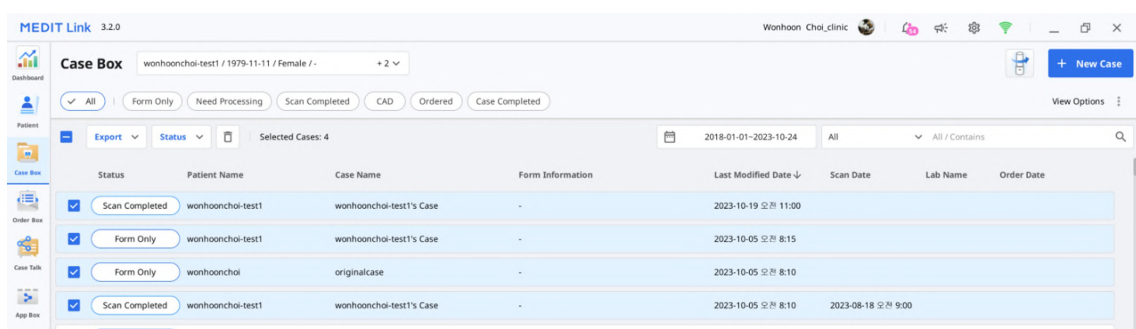

3. Nhấp vào "Xuất" và chọn "Danh sách ca (như hiển thị)" hoặc "Danh sách ca (tất cả mục)."

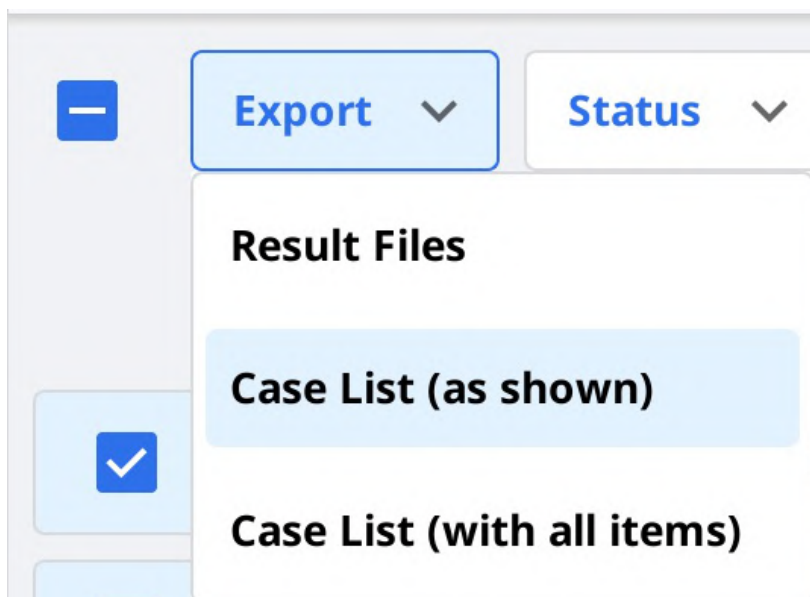

Lưu ý

Danh sách ca (như hiển thị): Xuất danh sách ca kèm các mục như đang hiển thị trên màn hình. Đi tới Tùy chọn hiển thị > Mục trong bảng để hiển thị hoặc ẩn các mục theo ý muốn.

Danh sách ca (tất cả mục): Xuất danh sách ca kèm tất cả các mục, bao gồm Trạng thái, Tên ca, Ngày sinh, Thông tin mẫu, Ngày sửa cuối cùng, Ngày quét, Ngày đặt hàng và Tên phòng lab.

4. Xác định đường dẫn và tên tệp, sau đó lưu danh sách.
5. Danh sách ca được lưu dưới dạng tệp CSV.

Xuất đường viền dấu


Medit Scan for Clinics có chức năng tạo đường viền dấu và Medit Link có thể chuyển đường viền dấu đến chương trình CAD.

Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc

Nhìn chung, Medit Link chuyển đổi đường viền dấu thành màu sắc và xuất đồng thời kết quả cùng hàm trên hoặc hàm dưới. Bạn có thể tạo đường viền dấu trong cad có tham chiếu thông tin màu sắc.

Ví dụ:

Hàm trên

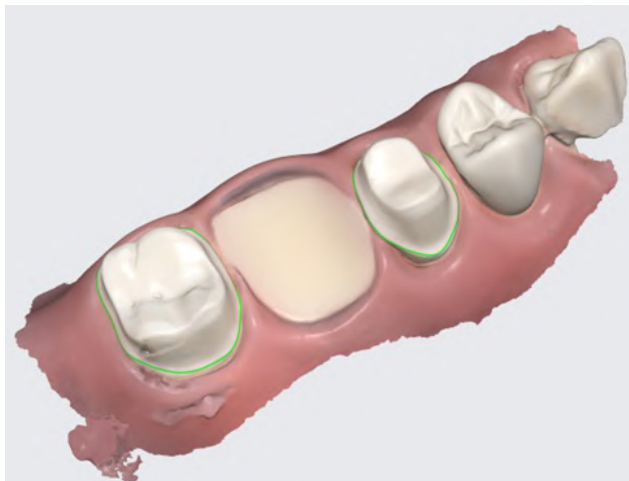

Kết quả có đường viền dấu dưới dạng thông tin màu sắc

Lưu ý

Tính năng này có sẵn cho nhiều định dạng có thông tin màu sắc như meditMesh, OBJ và PLY. Đường viền dấu không chuyển đổi thành STL.

Lưu ý

Loại > 3Shape không hỗ trợ tính năng này.


Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp

Trong trường hợp Exocad, Medit Link xuất đường viền dấu dưới dạng "~margin.xyz" có thể được nhập trực tiếp vào exocad.

Bạn có thể sử dụng tệp này trong exocad mà không cần thao tác thêm.


Ví dụ:

Hàm trên

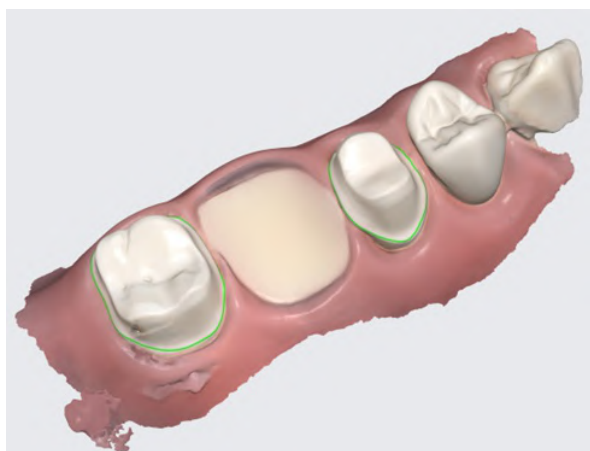

Kết quả có đường viền dấu dưới dạng thông tin màu sắc

Đường viền dấu

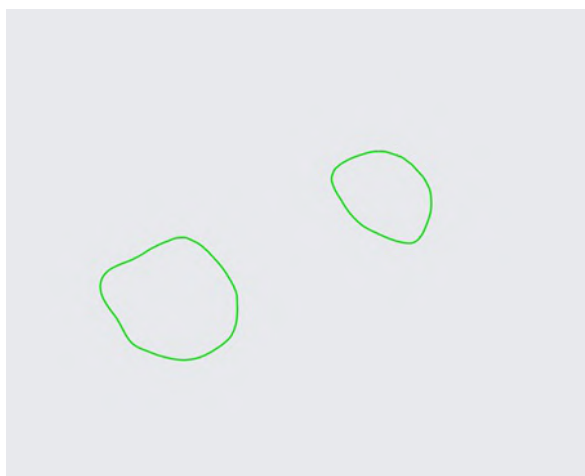

Đường viền dấu được xuất dưới dạng tệp riêng lẻ

Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link

Medit Link có chức năng tải xuống.

Nếu bạn muốn nhận tệp kết quả mà không phải cài đặt ứng dụng Medit Link, bạn có thể tải xuống tệp từ dịch vụ web Medit Link.

Lưu ý


Dữ liệu phải được tải lên Medit Cloud để tệp có thể được tải xuống từ trang web.

Chức năng tải xuống có sẵn trong menu của dịch vụ web Medit Link sau.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Bạn có thể tìm thấy nút "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

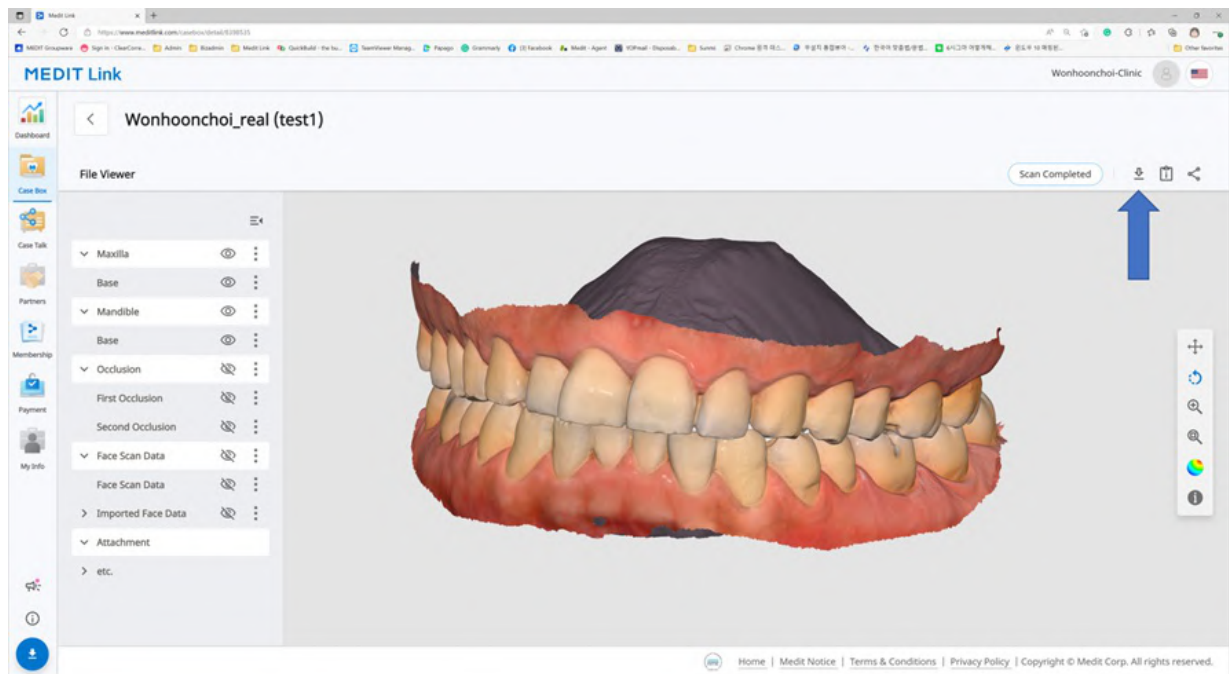

Web Viewer

Khi chia sẻ ca bằng Case Talk, bạn có thể đặt xem có cho phép tải xuống không.

Nếu bạn chọn "Cấp quyền tải xuống" và chia sẻ ca này, tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ đều có thể tải xuống tệp.

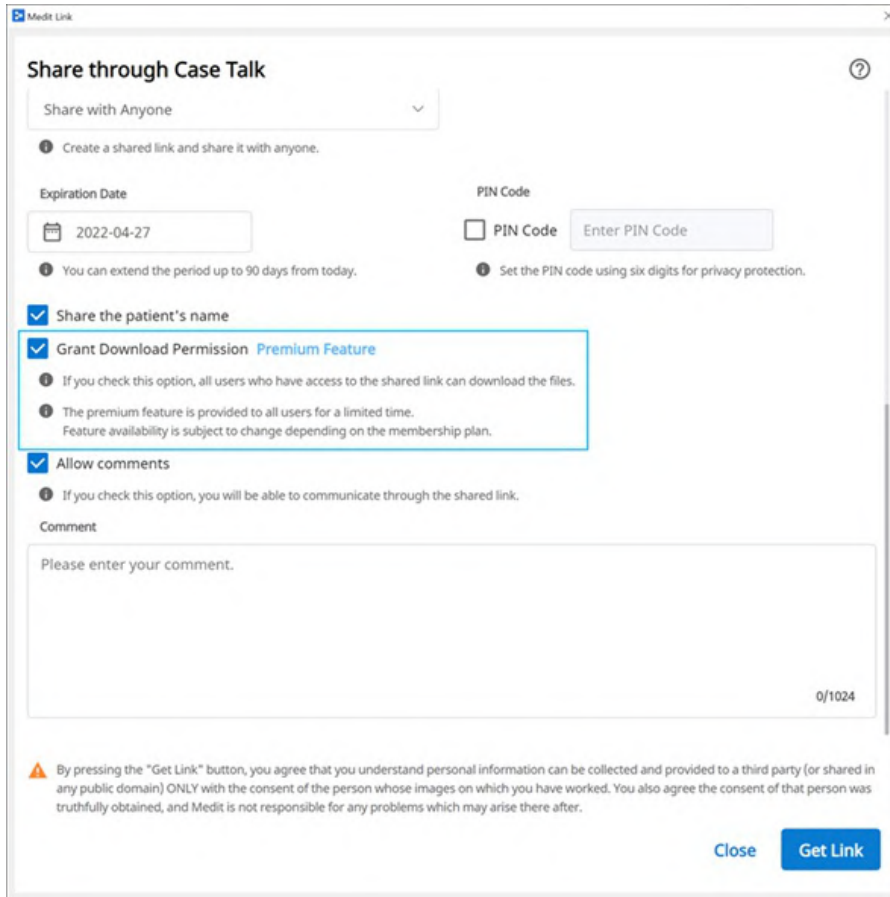

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Trong Web Viewer, bạn có thể tìm thấy biểu tượng "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

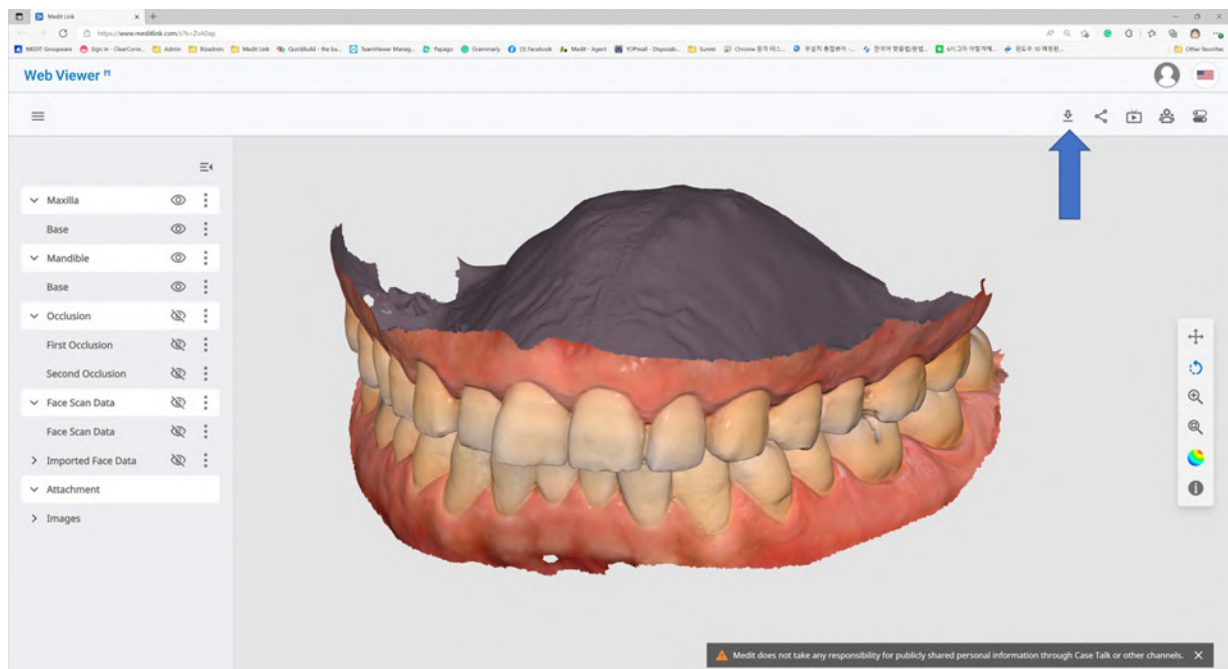

1. Nhấp vào "Tải xuống."



2. Chọn định dạng lưới từ hộp thoại tải xuống.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Sau đó nhấp vào "OK."

Đơn hàng/Quản lý đơn hàng

Bạn có thể dễ dàng đặt hàng một ca kèm dữ liệu thu được từ các chương trình kết nối và do người dùng đính kèm.

Đặt hàng ca

Bạn có thể đặt hàng với đối tác trong Case Box.

1. Nhấp vào nút "Đặt hàng".
2. Kiểm tra thông tin cần thiết cho đơn hàng của bạn.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel


OK

3. Chọn đối tác.
4. Kiểm tra thông tin sản phẩm từ tab Bảng kê đơn hàng.
 - Bạn có thể quyết định có nên chia sẻ tên của bệnh nhân hay không.
5. Kiểm tra tệp sẽ đặt hàng từ tab Danh sách tệp.
6. Nhập ngày giao hàng mong muốn.
 - Giá trị mặc định được đặt là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
7. Bạn có thể thêm ghi chú và tag cho đối tác để nêu thông tin chi tiết cụ thể.
8. Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp cắn thì bạn có thể chọn "Đặt hàng tất cả quan hệ khớp cắn" để gửi đồng thời tất cả kết quả khớp cắn.

9. Tiến hành đặt hàng.


Xác nhận đơn hàng (In Box)

- Chấp nhận sau khi nhận được đơn hàng.
- Đơn hàng đã chấp nhận sẽ được gửi đến Work Box.

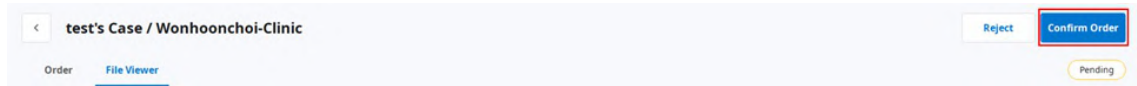


Hủy đơn hàng (Order Box)

- Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi đối tác chấp nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã hủy.

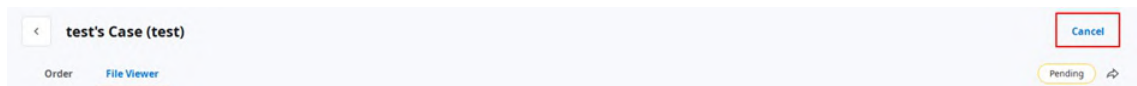


Từ chối đơn hàng (In Box)

- Bạn có thể từ chối đơn hàng đã nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã từ chối.

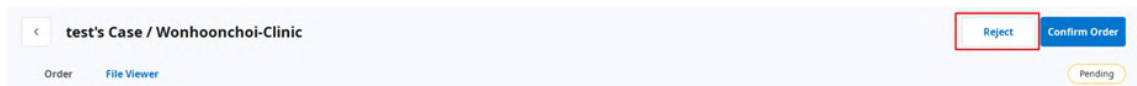

Kiểm tra ca đã đặt hàng

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết ca đã đặt hàng từ Order Box trong tài khoản phòng khám. Bạn cũng có thể kiểm tra ca đã nhận từ In Box trong tài khoản phòng lab.

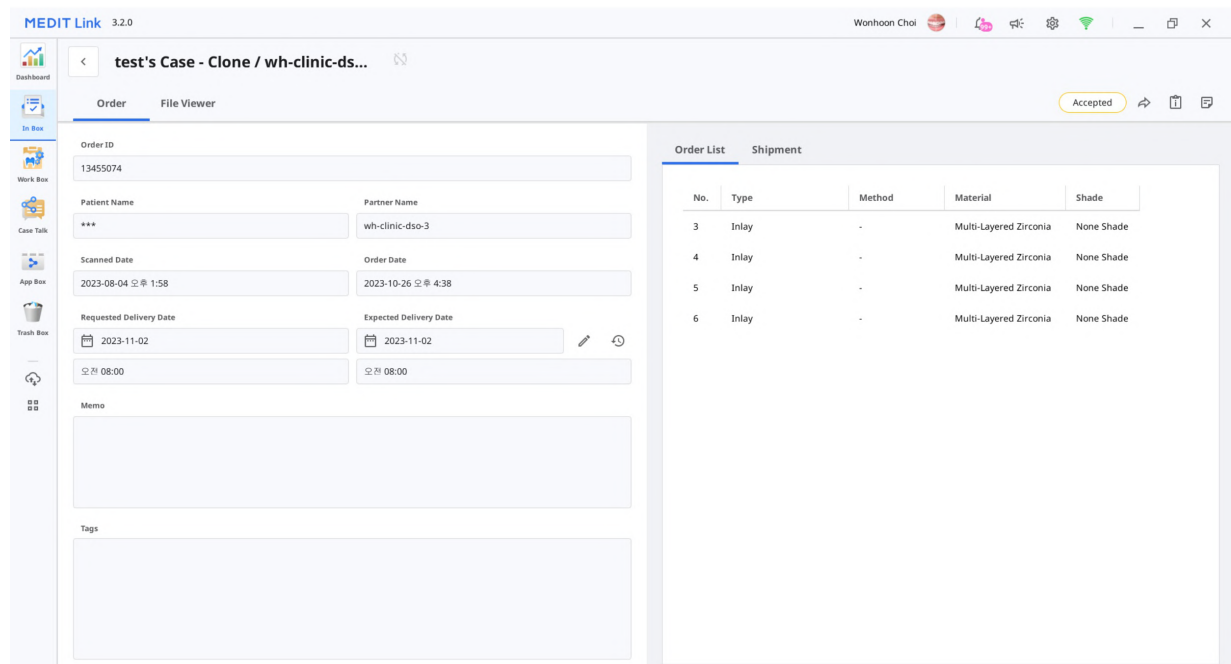

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Thông tin đơn hàng	Đơn hàng có thể có những thông tin sau: ID đơn hàng/tên bệnh nhân/tên tài khoản/ngày quét/ngày đặt hàng/ngày giao hàng/ngày hết hạn giao hàng/bản ghi nhớ. Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của sản phẩm đã đặt hàng và thông tin giao hàng.
Bảng kê đơn hàng	Bảng kê đơn hàng hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm đã đặt hàng.
Vận chuyển	Nhập/kiểm tra thông tin vận chuyển.

Nhập thông tin vận chuyển (In Box)

Nhập thông tin vận chuyển của ca đã hoàn tất và bắt đầu vận chuyển.

1. Nhấp vào tab Vận chuyển.
2. Nhập thông tin vận chuyển và nhấp vào "Đăng ký."

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Thông tin đã nhập sẽ được gửi cho đối tác.

Quản lý ngày giao hàng

Bạn có thể đặt ngày giao hàng dự kiến khi đặt hàng và thông tin này sẽ được chuyển tiếp cho đối tác.

Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)

- Bạn có thể nhập ngày yêu cầu giao hàng khi đặt hàng từ Case Box.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Giá trị mặc định là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
- Nhập ngày/thời gian bạn muốn nhận sản phẩm và tiến hành đặt hàng.
- Bạn có thể dễ dàng đặt thời gian bằng thanh trượt.

Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)

- Bạn có thể nhập ngày giao hàng dự kiến cho ca đã đặt hàng từ In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0


Total KRW 0

1. Kiểm tra ngày yêu cầu giao hàng với đối tác và lên lịch lại bằng nút "Chỉnh sửa".



2. Nhập ngày giao dự kiến dựa trên ngày làm việc thực tế. Bạn cũng có thể để lại bình luận nếu cần.

3. Nhấp vào "Áp dụng."

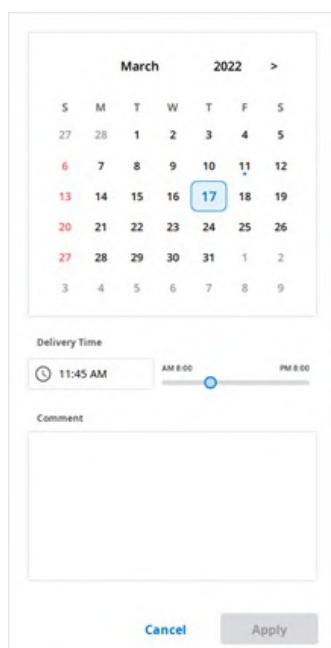

The screenshot shows a date selection calendar for March 2022. The date 17 is highlighted with a blue border. Below the calendar is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time picker set to 11:45 AM. A horizontal slider below the time picker ranges from AM 8:00 to PM 8:00. Below the time picker is a 'Comment' text area. At the bottom are 'Cancel' and 'Apply' buttons.

4. Ngày giao hàng dự kiến và bản ghi nhớ sẽ được chuyển tiếp cùng với đơn hàng.

- Bạn có thể kiểm tra ngày và bản ghi nhớ trong Order Box.
- Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng dự kiến và thay đổi này sẽ được chuyển tiếp đến đối tác.

5. Bạn có thể kiểm tra lịch sử ca bằng nút "Lịch sử".



Hoàn tất ca

Hoàn thành (Work Box/In Box)


Sau khi hoàn thành tất cả tác vụ, nhấp vào "Xong" để hoàn tất ca.

Hoàn tất ca từ thông tin chi tiết ca

Bạn có thể tìm thấy biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải nút "Mở" hoặc "Quét lại".




Hoàn tất công việc bằng cách nhấp vào biểu tượng và chọn "Done."

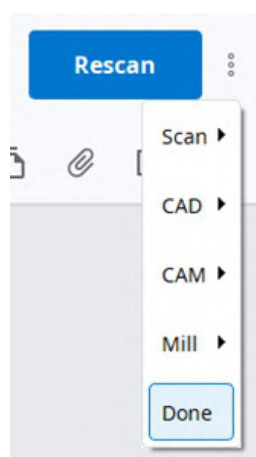

Hoàn tất nhiều ca từ danh sách ca

1. Truy cập vào Work Box.
2. Chọn tất cả ca cần hoàn tất.

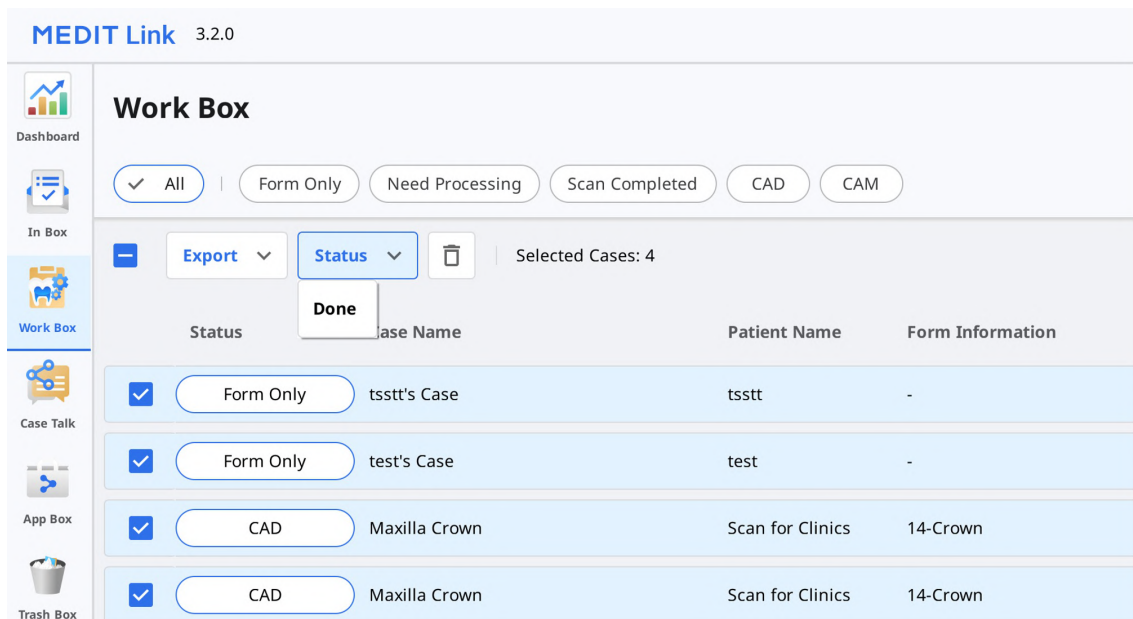


3. Nhấp vào "Trạng thái" và chọn "Done."

Hoàn thành (Case Box/Order Box)

Sau khi phòng lab hoàn tất ca, phòng khám cần xác nhận ca đó để hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng.

Phòng khám có thể tìm thấy nút "Xác nhận giao hàng" trong Order Box nếu phòng lab đã hoàn tất công việc của mình.

Nhấp vào nút này sẽ hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng và trạng thái ca sẽ đổi thành "Case Completed."

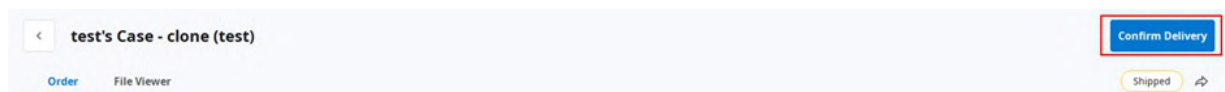

Hoàn tất ca chưa đặt hàng trong Case Box

Bạn có thể hoàn tất những ca chưa được đặt hàng đến phòng Lab từ Case Box.

1. Truy cập vào Case Box.
2. Chọn ca bạn muốn hoàn tất.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status	Case Name
☐	Ordered	test
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1
☒	Scan Completed	test test(1234)
☒	Scan Completed	test
☒	Scan Completed	test

3. Nhấp vào "Trạng thái" và chọn "Case Completed."

Giao tiếp bằng tag

Bạn có thể dùng tag để bổ sung thêm thông tin cho ca của mình rồi gửi cho đối tác.

Thêm tag khi tạo một ca mới

Bạn có thể nhập tag khi tạo ca mới hoặc khi chỉnh sửa thông tin ca.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và chọn tag bạn đã từng sử dụng.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Thêm tag khi đặt hàng

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa tag trong hộp thoại Đặt hàng khi đặt hàng.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Kiểm tra tag để biết chi tiết ca

