


# USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

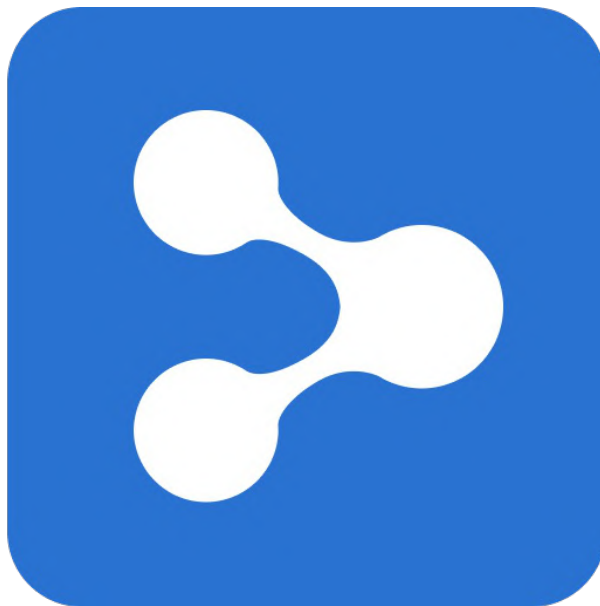

# Table of Contents

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
|    | <b>Medit Link</b>                       |
| 7  | مقدمة                                   |
| 7  | Medit Link                              |
| 7  | نظرة عامة على الخدمة                    |
| 8  | الخدمات السحابية                        |
| 9  | منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب      |
|    | <b>Medit Link &lt; التثبيت</b>          |
| 10 | متطلبات النظام                          |
| 10 | متطلبات النظام لـ Windows               |
| 10 | متطلبات النظام لـ macOS                 |
| 10 | متطلبات النظام لخدمة الويب              |
| 10 | الموصى به للمتصفحات                     |
| 10 | الحد الأدنى للأجهزة المحمولة            |
| 11 | التثبيت على Windows                     |
| 14 | التثبيت على macOS                       |
|    | <b>Medit Link &lt; بدء الاستخدام</b>    |
| 18 | إنشاء حساب وتسجيل الدخول                |
| 18 | موقع Medit Link                         |
| 18 | إنشاء حساب                              |
| 21 | تسجيل الدخول وصفحة الترحيب              |
|    | <b>Medit Link &lt; موقع Medit Link</b>  |
| 24 | Dashboard                               |
| 24 | نظرة عامة على الـ Dashboard             |
| 24 | Medit Insights                          |
|    | الاشتراك في Medit                       |
| 25 | Insights                                |
|    | إلغاء الاشتراك في Medit                 |
| 26 | Insights                                |
| 27 | Patient                                 |
| 27 | البحث عن المرضى                         |
| 28 | Case Box/Work Box                       |
| 28 | فترة الحالات                            |
| 28 | فترة حسب المريض                         |
| 31 | الفترة حسب الحالة                       |
| 31 | الفترة حسب المدة                        |
| 32 | الفترة حسب البحث                        |
| 32 | تفاصيل الحالة                           |
| 34 | Order Box/In Box                        |
| 34 | تفاصيل الطلب                            |
|    | علامات التبويب في Order                 |
| 34 | Box/In Box                              |
| 35 | Case Talk                               |
| 35 | إنشاء Case Talk                         |
| 36 | تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة |
| 38 | تفاصيل Case Talk                        |

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Web Viewer                                                                  |
| 40 | التعليق                                                                     |
| 41 | التعليقات                                                                   |
| 42 | مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي                                               |
| 42 | شجرة البيانات                                                               |
| 42 | التحكم بشجرة البيانات                                                       |
| 43 | ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد                                                 |
| 45 | Partners                                                                    |
| 45 | البحث عن شركاء                                                              |
| 45 | قائمة شركائي                                                                |
| 46 | دعوة شركاء                                                                  |
| 47 | Membership                                                                  |
| 47 | عضوية                                                                       |
| 47 | Medit Cloud Storage Plan                                                    |
| 49 | التخزين السحابي                                                             |
| 49 | الاشتراك                                                                    |
| 51 | إلغاء الاشتراك                                                              |
| 52 | اشترائي                                                                     |
| 53 | التفاصيل                                                                    |
| 53 | إعادة الاشتراك                                                              |
| 54 | كيفية إضافة طريقة دفع                                                       |
| 55 | كيفية تغيير طريقة الدفع                                                     |
| 55 | الاسترداد                                                                   |
| 56 | التفاصيل                                                                    |
| 56 | تسجيل رمز الاسترداد                                                         |
| 57 | تفعيل رمز الاسترداد                                                         |
| 57 | تفاصيل الدفع                                                                |
| 58 | عرض تفاصيل الفاتورة                                                         |
| 60 | My Info                                                                     |
| 60 | حسابي                                                                       |
| 60 | عيادي/مختبري (حساب المشرف فقط)                                              |
| 61 | الماسح الضوئي الخاص بي                                                      |
| 63 | قوائم أخرى                                                                  |
| 63 | الإخطارات & التحديثات                                                       |
| 63 | مواقع ذات صلة                                                               |
| 64 | تنزيل تطبيق Medit Link                                                      |
|    | <b>Medit Link &lt; تطبيق Medit Link</b>                                     |
| 65 | نظرة عامة                                                                   |
| 65 | يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات. |
| 66 | شريط العنوان                                                                |
| 66 | My Information                                                              |
| 66 | الإشعارات                                                                   |
| 67 | الإخطارات & التحديثات                                                       |
| 67 | الإعدادات                                                                   |
| 68 | حالة الشبكة                                                                 |
| 70 | الإعدادات                                                                   |
| 70 | عام                                                                         |
| 71 | إدارة التخزين                                                               |
| 72 | الفترة المحددة                                                              |
| 72 | التخزين المحلي                                                              |
| 72 | التخزين السحابي                                                             |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 72  | تحديد البرنامج المُتَّصِل                    |
| 73  | خيارات التصدير                               |
| 74  | أداة تحويل الحالة                            |
| 75  | تصدير الحالة                                 |
| 76  | إستيراد حالة                                 |
| 78  | خيارات الوكيل                                |
| 78  | حول                                          |
| 79  | دليل المستخدم                                |
| 80  | القائمة                                      |
| 80  | Dashboard                                    |
| 80  | Patient                                      |
| 81  | إضافة مريض جديد                              |
| 81  | حذف مريض                                     |
| 81  | دمج مرضى                                     |
| 82  | Case Box/Work Box                            |
|     | علامات التبويب في Case                       |
| 83  | Box/Work Box                                 |
|     | الوظائف في Case                              |
| 83  | Box/Work Box                                 |
| 84  | Order Box/In Box                             |
|     | علامات التبويب في Order                      |
| 85  | Box/In Box                                   |
| 85  | Case Talk                                    |
| 86  | App Box                                      |
| 86  | الكل                                         |
| 86  | Medit Apps                                   |
| 87  | تم تنزيلها                                   |
| 87  | Trash Box                                    |
| 87  | مدير مزامنة الحالات                          |
| 88  | التحميل                                      |
| 88  | التنزيل                                      |
| 88  | مواقع ذات صلة                                |
| 90  | عارض الملفات                                 |
| 90  | شجرة البيانات                                |
| 90  | أدوات التحكم في النموذج                      |
| 90  | ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد                  |
| 92  | التحكم بالصور ثنائية الأبعاد                 |
| 92  | أدوات الوظائف                                |
| 92  | التقاط الصور والمذكرة                        |
| 93  | Ortho Capture                                |
| 94  | ملء الثقوب                                   |
| 95  | القص                                         |
| 97  | تحسين محاذاة الإطباق                         |
| 100 | حركة الفك السفلي                             |
| 100 | إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات |
| 100 | كيفية إدارة نتائج متعددة                     |
| 102 | خيارات العرض                                 |
| 102 | فلتر الحالة                                  |
| 103 | نوع العرض                                    |
| 103 | التجميع                                      |
| 103 | الفرز                                        |
| 105 | الفلتر والبحث                                |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 105 | فلتر حسب المريض       |
| 106 | الفلتر حسب التاريخ    |
| 107 | إمكانات البحث المتقدم |

#### Medit Link < سير العمل

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 108 | إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات |
| 108 | إنشاء حالات                           |
| 108 | إنشاء حالات في Case Box (العيادة)     |
| 108 | إنشاء حالات في Work Box (المختبر)     |
| 109 | تعديل الحالات                         |
| 109 | تعديل الحالات في Case Box (العيادة)   |
| 110 | تعديل الحالة في Work Box (المختبر)    |
| 110 | استنساخ الحالات                       |
| 111 | استنساخ حالة في Case Box (العيادة)    |
| 111 | استنساخ حالة في Work Box (المختبر)    |
| 111 | حذف حالة                              |
| 111 | حذف حالة (العيادة والمختبر)           |
| 112 | معلومات التسجيل                       |
| 112 | تسجيل معلومات التسجيل في Case Box     |
| 112 | الإدخال في تبويب النموذج              |
| 112 | تسجيل معلومات التسجيل في Work Box     |
| 112 | الإدخال في تبويب النموذج              |
| 112 | توصيل الأسنان بجسر                    |
| 113 | ضبط خيارات المسح                      |
| 113 | Medit Scan for Labs                   |
| 113 | خيارات عامة                           |
| 113 | خيارات بالأشنان                       |
| 114 | الإضافة إلى المفضلات                  |
| 114 | الإضافة إلى المفضلات                  |
| 114 | إدارة القوالب المفضلة                 |
| 115 | العمل على المسح/CAD                   |
| 115 | عملية المسح                           |
| 115 | عملية CAD                             |
| 115 | الاستفادة من التطبيقات الإضافية       |
| 115 | مُضاف المشغل السريع                   |
| 115 | إدارة مشغل التطبيقات                  |
| 116 | المشغل السريع                         |
| 116 | كل التطبيقات                          |
| 117 | الحصول على ملفات النتائج              |
| 117 | تصدير ملفات نتائج المسح               |
| 118 | تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات  |
| 120 | تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات   |
| 122 | تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات  |
| 125 | تصدير قائمة الحالات كملف CSV          |
| 126 | تصدير خط الإنهاء                      |
| 126 | تصدير خط الإنهاء كلون                 |
| 127 | تصدير خط الإنهاء كملف                 |
| 127 | تنزيل ملفات من موقع Medit Link        |
| 128 | Case Box/Work Box                     |
| 128 | Web Viewer                            |
| 131 | طلب/إدارة الطلبات                     |
| 131 | طلب حالات                             |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 132 | تأكيد الطلب (In Box)                       |
| 132 | إلغاء الطلب (Order Box)                    |
| 132 | رفض طلب (In Box)                           |
| 132 | التحقق من الحالات المطلوبة                 |
| 133 | إدخال معلومات الشحن (In Box)               |
| 133 | إدارة تاريخ التسليم                        |
| 133 | تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة) |
| 134 | تحديد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر) |
| 135 | إكمال الحالة                               |
|     | الإكمال (Work)                             |
| 135 | (Box/In Box)                               |
| 135 | أكمل حالة من تفاصيل الحالة                 |
| 136 | أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات     |
|     | الإكمال (Case)                             |
| 136 | (Box/Order Box)                            |
| 136 | أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box           |
| 138 | التواصل باستخدام العلامات                  |
| 138 | إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة          |
| 139 | إضافة علامات عند الطلب                     |
| 139 | تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة          |

## مقدمة

### Medit Link

Medit Link هي أداة تعاونية مصممة لتسهيل التواصل بين العيادات والمختبرات لتوفير سير عمل محسن لكل الأطراف.

يقدم ميزات متباينة بناءً على نوع وأذونات كل حساب. يوفر البرنامج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة سير العمل، من المسح الضوئي باستخدام الماسحات الضوئية الفموية والنموزجية، إلى طلب الحالات، إلى تصميم التركيبات وإنتاجها.

يتكون Medit Link من خدمة ويب وتطبيق كمبيوتر.

### نظرة عامة على الخدمة

| الموقع                                                                                                                                                                                                                        | التطبيق                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تسجيل وإدارة الحساب</li> <li>البحث عن وإدارة الشركاء</li> <li>مشاركة الحالات عبر Web Viewer برابط قابل للمشاركة</li> <li>فتح حالات منشأة على التطبيق</li> <li>إدارة الطلبات</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>إدخال معلومات النموذج</li> <li>المسح الضوئي</li> <li>إدارة الطلبات</li> <li>الربط بالـ CAD</li> <li>إدارة المرضى</li> </ul>       |
| قم بالبحث وإدارة الشركاء والعيادات الخاصة بك، ومشاركة الحالات.                                                                                                                                                                | أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، قدم طلبات، وقم بإدارة المرضى.                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dashboard</li> <li>Patient</li> <li>Case Box</li> <li>Order Box</li> <li>Case Talk</li> <li>Partners</li> <li>Membership</li> <li>My Info</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dashboard</li> <li>Patient</li> <li>Case Box</li> <li>Order Box</li> <li>Case Talk</li> <li>App Box</li> <li>Trash Box</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Patient</li> <li>Case Box</li> <li>Order Box</li> <li>Case Talk</li> <li>My Info</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patient</li> <li>Case Box</li> <li>Case Talk</li> <li>Order Box</li> <li>App Box</li> <li>Trash Box</li> </ul>                    |
| ابحث وقم بإدارة الشركاء ومختبرك، وشارك الحالات.                                                                                                                                                                               | أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، وقم بإدارة الطلبات.                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dashboard</li> <li>In Box</li> <li>Work Box</li> <li>Case Talk</li> <li>Partners</li> <li>Membership</li> <li>My Info</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dashboard</li> <li>In Box</li> <li>Work Box</li> <li>Case Talk</li> <li>App Box</li> <li>Trash Box</li> </ul>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In Box</li> <li>Work Box</li> <li>Case Talk</li> <li>My Info</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Box</li> <li>Work Box</li> <li>Case Talk</li> <li>App Box</li> <li>Trash Box</li> </ul>                                        |

## الخدمات السحابية

يدعم Medit Link التحميل/التنزيل التلقائي لقواعد البيانات والملفات من خلال AWS (Amazon Web Services).

تتم مزامنة البيانات المخزنة في السحابة تلقائيًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمين متعددين في المنظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات من أي جهاز كمبيوتر في أي وقت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة على الحفاظ على أمان جميع بياناتك. إنها تحافظ على بياناتك آمنة حتى في حالة فقد البيانات بسبب فشل الكمبيوتر المفاجئ.

تتيح الخدمة السحابية لأطباء الأسنان والمختبرات المشاركة مشاركة البيانات بسرعة دون متاعب إرسال بريد إلكتروني أو نقل عمليات المسح يدويًا. يتم تشفير جميع البيانات، بما في ذلك معلومات المريض، وتخزينها ونقلها بشكل آمن. يتوافق Medit مع القوانين واللوائح الطبية مثل HIPAA و GDPR.

## منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

يقدم Medit Link نظام الطلب الخاص به.

- يتيح Medit Link للمستخدمين إقامة شركات بين أطباء الأسنان ومختبرات الأسنان ومشاركة البيانات بسرعة وسهولة.
- يمكنك التحقق من حالة الطلب وإدارتها.

## متطلبات النظام

### ملحوظة

يرجى الرجوع إلى متطلبات النظام لـ Medit Scan for Labs و Medit Scan for Clinics إذا كنت ترغب في استخدام برنامج المسح مع الماسح الضوئي الخاص بك.

## متطلبات النظام لـ Windows

| حاسوب محمول & كمبيوتر سطح المكتب                                 |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Intel Core i5 2.6 GHz أو أعلى                                    | CPU      |
| GB 16 أو أعلى                                                    | RAM      |
| (NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB أو أحدث / أو بطاقة فيديو AMD مكافئة | الرسومات |
| Windows 10 64 Bit (غير متوفر في 32 Bit) أو أعلى                  | OS       |

## متطلبات النظام لـ macOS

| Mac                                        |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| M1 مع 8-Neural Engine، 16-core GPU، 7-core | المعالج      |
| GB 16 أو أعلى                              | RAM          |
| Monterey 12 أو أحدث                        | نظام التشغيل |

## متطلبات النظام لخدمة الويب

### الموصى به للمتصفحات

| المتصفحات                                |           |
|------------------------------------------|-----------|
| (Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium | الكمبيوتر |
| Chrome, Firefox                          | Android   |
| Safari, Chrome, Firefox                  | macOS     |


## الحد الأدنى للأجهزة المحمولة

| iOS                       | Android                    |              |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| ما يعادل iPhone 7 أو أعلى | ما يعادل Galaxy S7 أو أعلى | الجهاز       |
| iOS 11.0                  | Android 7.1 Nougat         | نظام التشغيل |
| GB 2 أو أعلى              | GB 3 أو أعلى               | RAM          |
| A10 Fusion                | أعلى من Snapdragon 710     | AP           |

## التثبيت على Windows

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع برامج اكتساب المسح - Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs.

1. قم بتشغيل Medit\_LinkSetup.exe.
2. حدد لغة للتثبيت.
3. حدد المجلد لتثبيت Medit Link. يرجى قراءة شروط وأحكام الترخيص والموافقة عليها والنقر على "تثبيت".

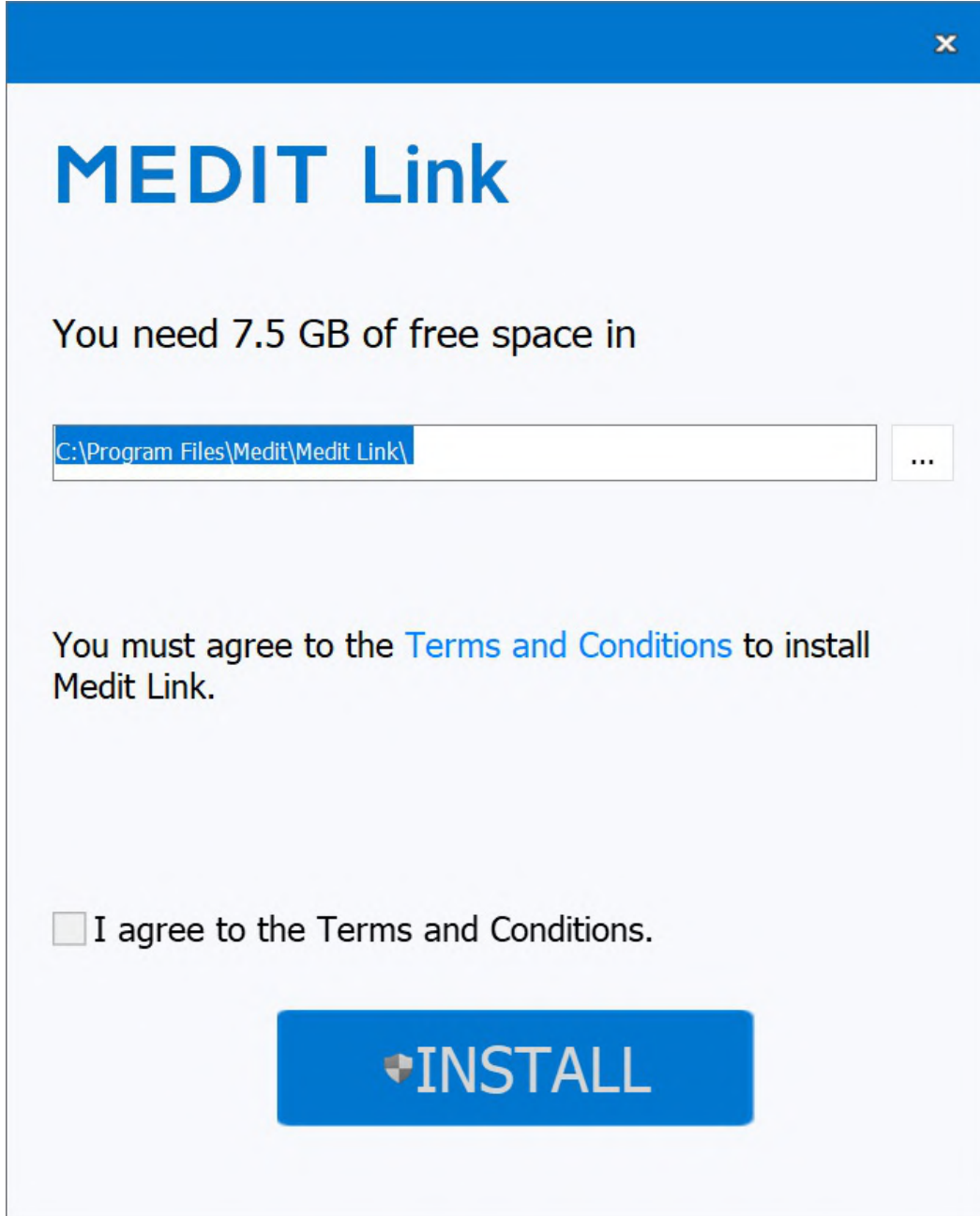

4. تأكد من فصل كبل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قد لا يبدأ التثبيت إذا كان الماسح متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. سيتم تثبيت البرنامج تلقائياً وقد يستغرق بضع دقائق. لا تقم بإيقاف تشغيل أو فصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن يكتمل التثبيت.



# MEDIT Link

Please wait for a while until the operation in progress is completed.

Status:

Installing prerequisite software...

6. يرجى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت. يمكنك المتابعة بدون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن لديك الماسح الضوئي.



# MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

**Restart Now**

**Restart Later**


ملحوظة

إذا لم تقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت، فقد لا يعمل الماسح الضوئي بشكل صحيح.


## التثبيت على macOS

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan for Clinics.


1. قم بتشغيل Medit\_Link\_x.x.x.pkg وانقر على "متابعة".

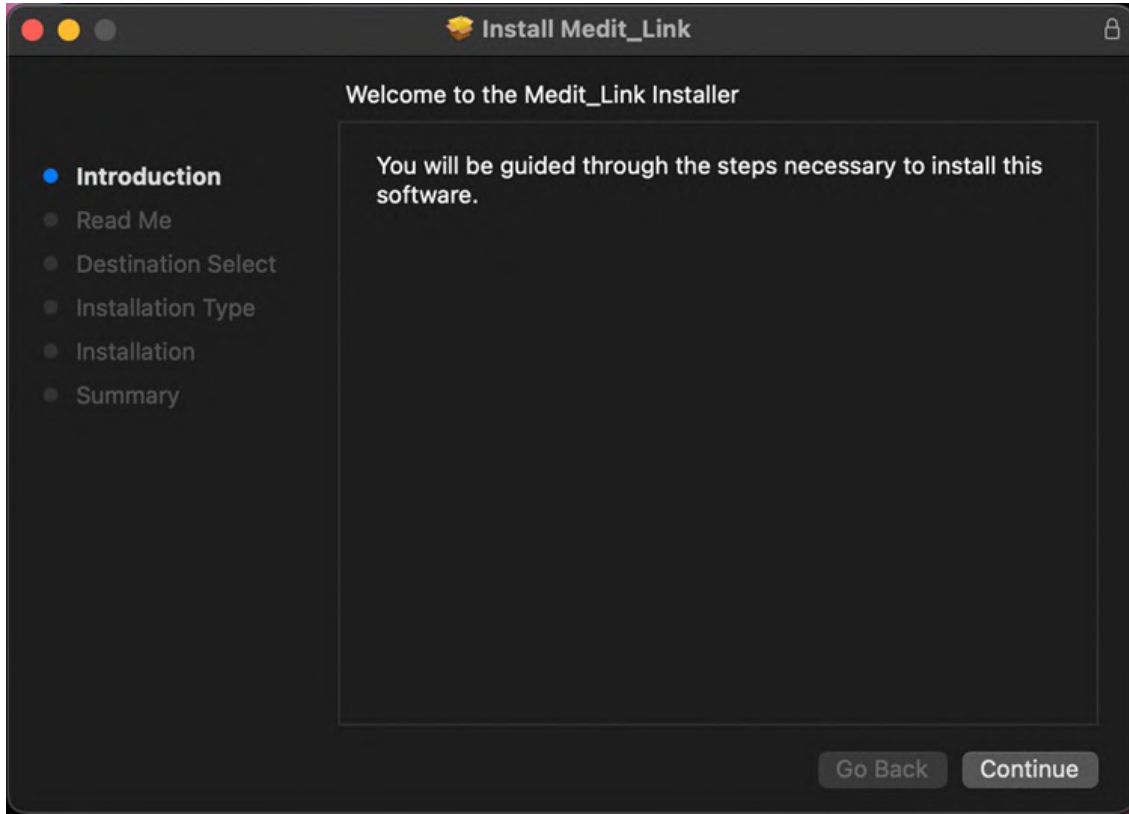


2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على "متابعة".

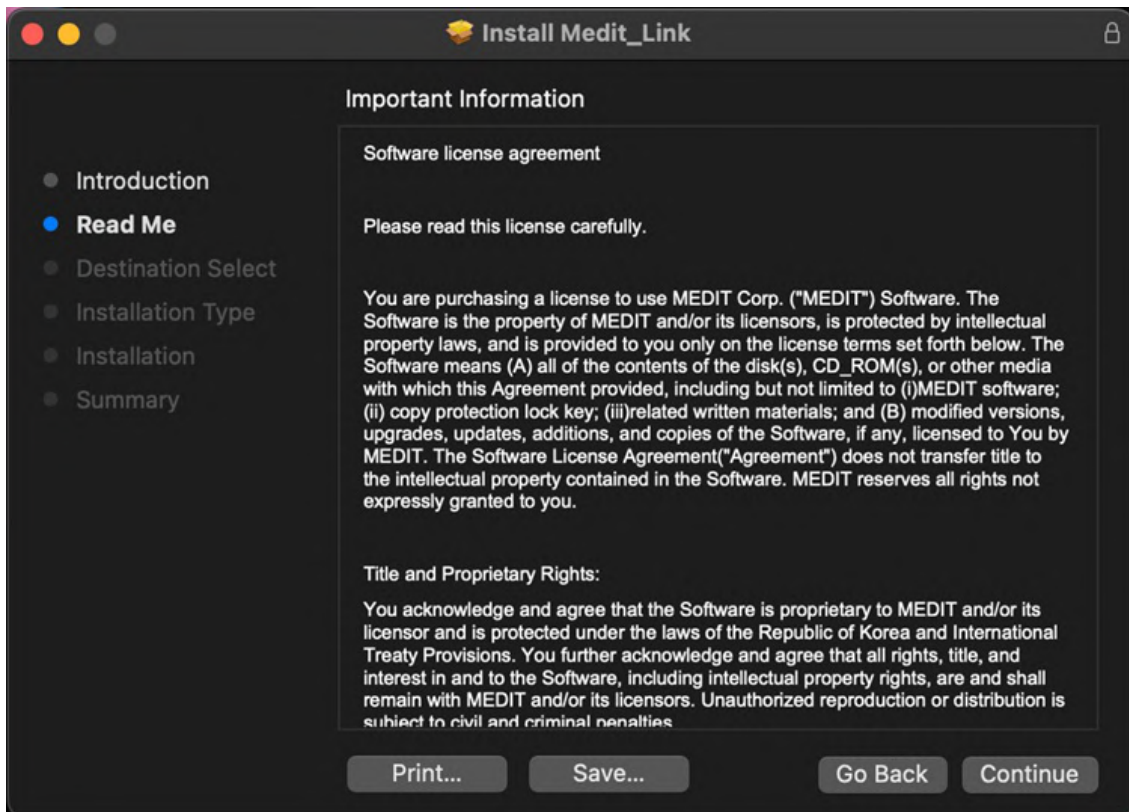

3. حدد القرص المراد تثبيته وانقر على "متابعة".

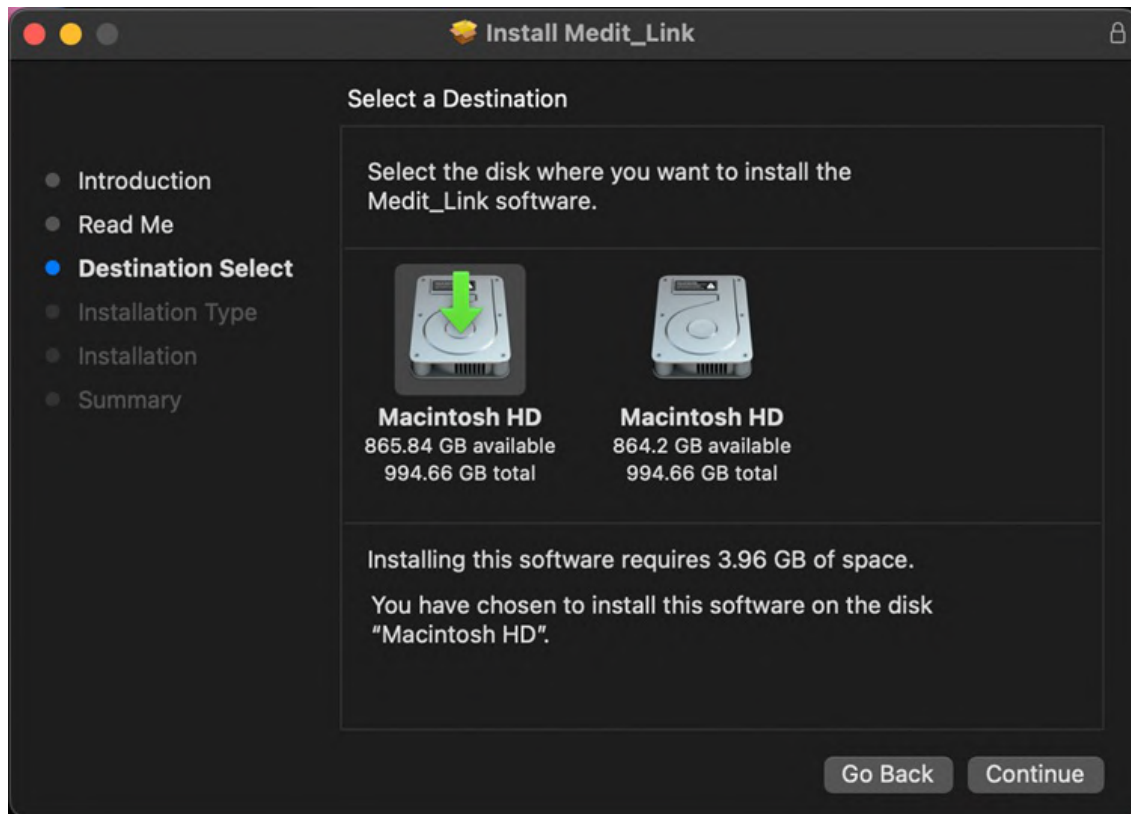


4. انقر على "تغيير موقع التثبيت..." لتغيير وجهة التثبيت.

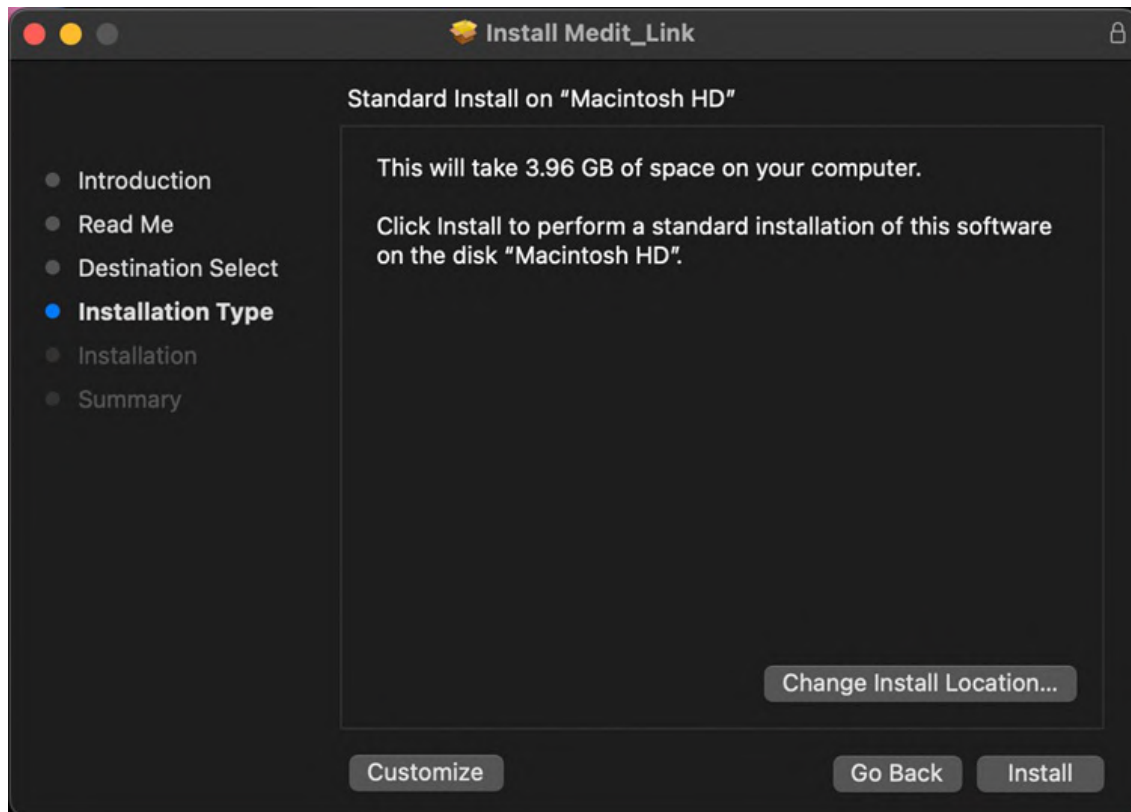


5. انقر على "تثبيت" واكتب كلمة مرور الMac للسماح بالتثبيت إذا طُلب منك ذلك.



6. انتظر حتى اكتمال التثبيت.

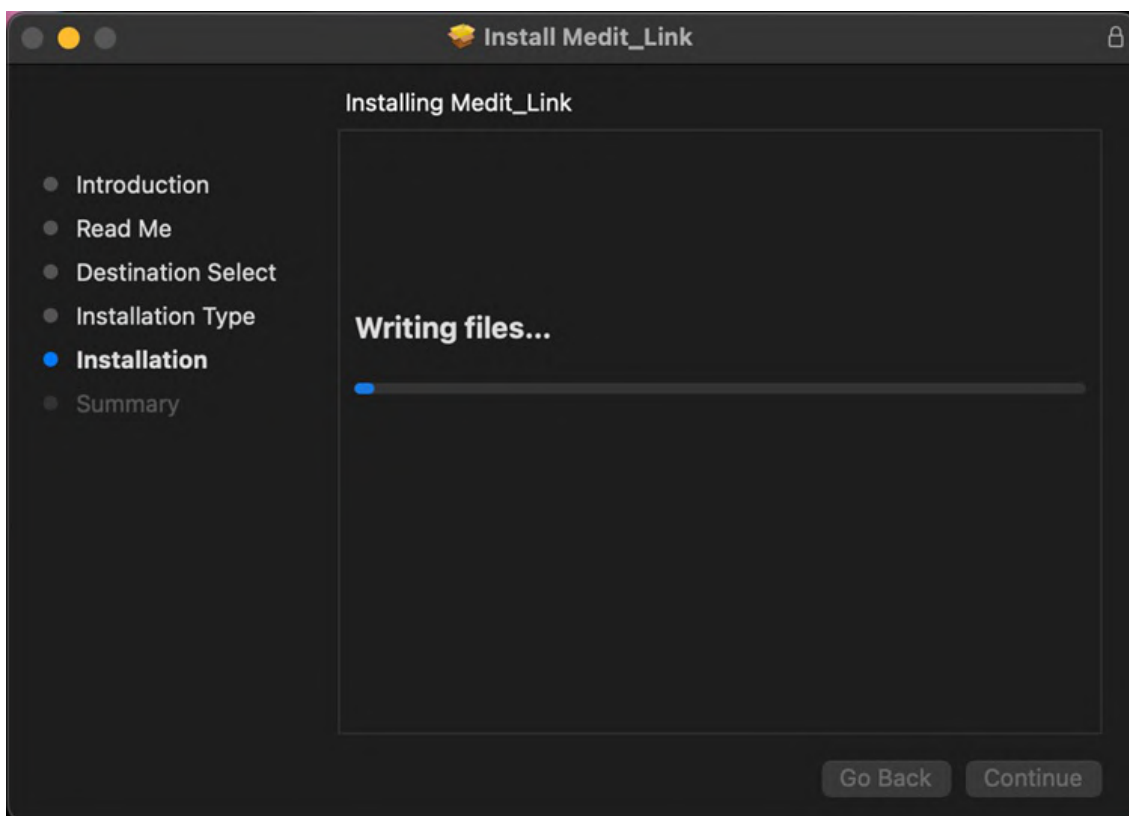


7. انقر على "إغلاق" للخروج من نافذة التثبيت.

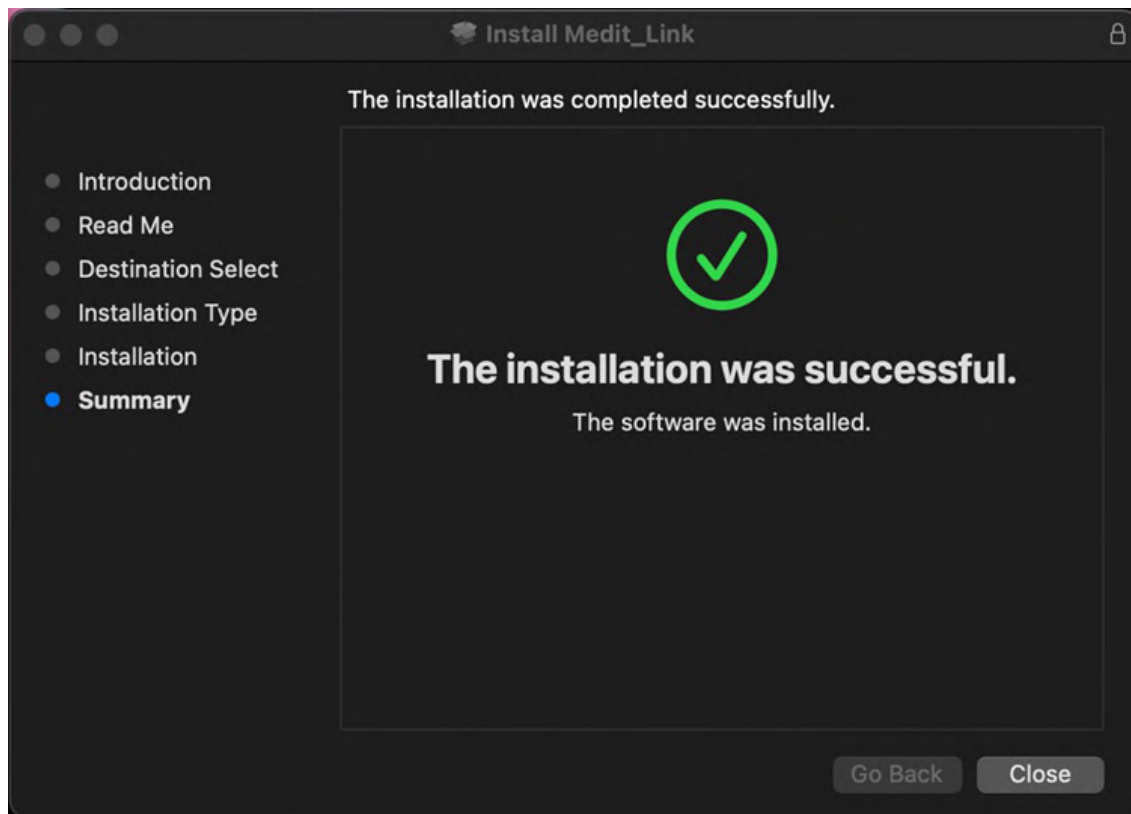

# إنشاء حساب وتسجيل الدخول

## موقع Medit Link

اشترك في خدمة Medit Link على [www.meditlink.com](http://www.meditlink.com).

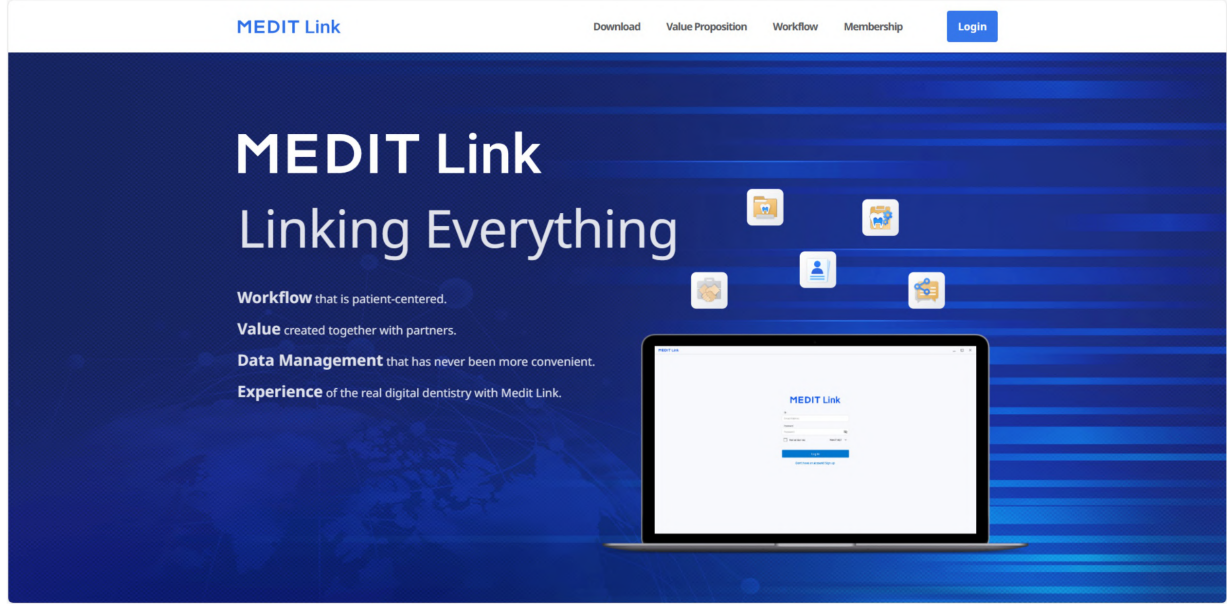

ملحوظة

تسجل في Medit Link China على [www.meditlink.cn](http://www.meditlink.cn).

## إنشاء حساب

لاستخدام خدمة Medit Link، يجب عليك إنشاء حساب. يمكنك الاستفادة من الميزات المتوفرة في Medit Link بعد إنشاء حساب كعيادة أو مختبر.

يمكن للمستخدمين اختيار أحد أنواع الحسابات الأربعة التالية للحصول على عضوية واستخدام الخدمة بميزات وامتيازات كاملة أو محدودة، حسب نوع الحساب.

- عيادة - مشرف
- عيادة - عضو
- مختبر - مشرف
- مختبر - عضو

عادةً، يكون المشرف ممثلًا عن مؤسستك ويكون له حق الوصول الكامل إلى جميع وظائف وخدمات Medit Link. في المقابل، حساب العضو لديه وصول محدود.

لإنشاء حساب والحصول على عضوية، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على "ليس لديك حساب بعد؟" أنشؤوا حساب على صفحة تسجيل الدخول.

# MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

**Log In**

**Don't have an account? Sign up.**



English (United States)



2. بعد قراءة الوصف المقدم، انقر على زر "تسجيل" لنوع الحساب الذي تريده.

## Create Your Medit Link Account



### Clinic


#### Administrator

##### Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

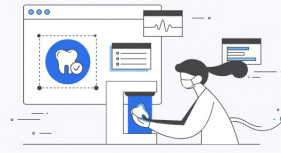

### Lab

#### Administrator

##### Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

#### Member

##### Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

#### Member

##### Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. يظهر نموذج التسجيل التالي.

## Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

- أدخل اسم العيادة أو المختبر ثم، بناءً على نوع الحساب الذي تريده، قم بما يلي:
  - إذا كنت تقوم بالتسجيل كمشرف، فانقر على "التحقق من التوفر" لمعرفة ما إذا كان الاسم الذي تم إدخاله متاحًا.
  - إذا كنت تقوم بالتسجيل كعضو، انقر على "بحث". يجب أن يقوم المشرف بالتسجيل مؤسستك بالفعل قبل أن تنشئ حساب.
- املأ بقية نموذج التسجيل وانقر على "تسجيل".

### ملحوظة

إذا وافقتم على تلقي معلومات تسويقية أثناء التسجيل، فسوف تتلقون معلومات مفيدة حول المنتج والخدمة من Medit.

- سيتم إرسال بريد إلكتروني للتحقق لك.
- لإكمال عملية التسجيل، تحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام الرابط المستلم.

## تسجيل الدخول وصفحة الترحيب

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول وانقر على "تسجيل الدخول".

# MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

**Log In**

**Don't have an account? Sign up.**




English (United States)



2. ستظهر لك النافذة المنبثقة التالية إذا لم تكن قد ملأت معلومات شركتك.

Welcome, stage-test-wh!

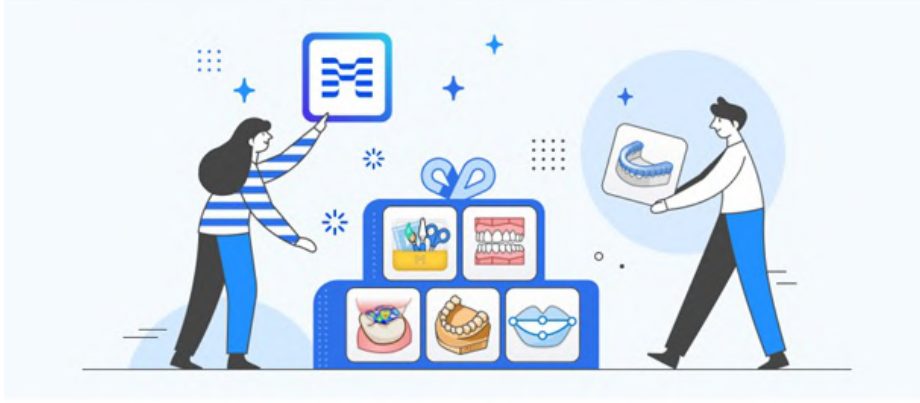

### Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.  
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

### ملحوظة


لاستخدام خدمات Medit Link، يجب إدخال معلومات عيادتكم أو مختبركم باستخدام حساب المشرف.

3. انقر على الزر "الذهاب إلى عيادتي" أو "الذهاب إلى مختبري" وأدخلوا معلومات العيادة أو المختبر، بما في ذلك اسم الشركة، صور الغلاف/الشعار، الخدمات التي تقدموها، عنوان المكتب، رقم المكتب وما إلى ذلك.
4. المعلومات التي تم إدخالها في صفحة الترحيب يمكن تعديلها في أي وقت على تبويب My Info < عيادتي أو مختبري على موقع Medit Link.

# Dashboard

## نظرة عامة على الـ Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بجميع الأعمال المنجزة على Medit Link في الرسوم البيانية والمخططات المرئية - سواء في تطبيق Medit Link أو على الموقع الإلكتروني.

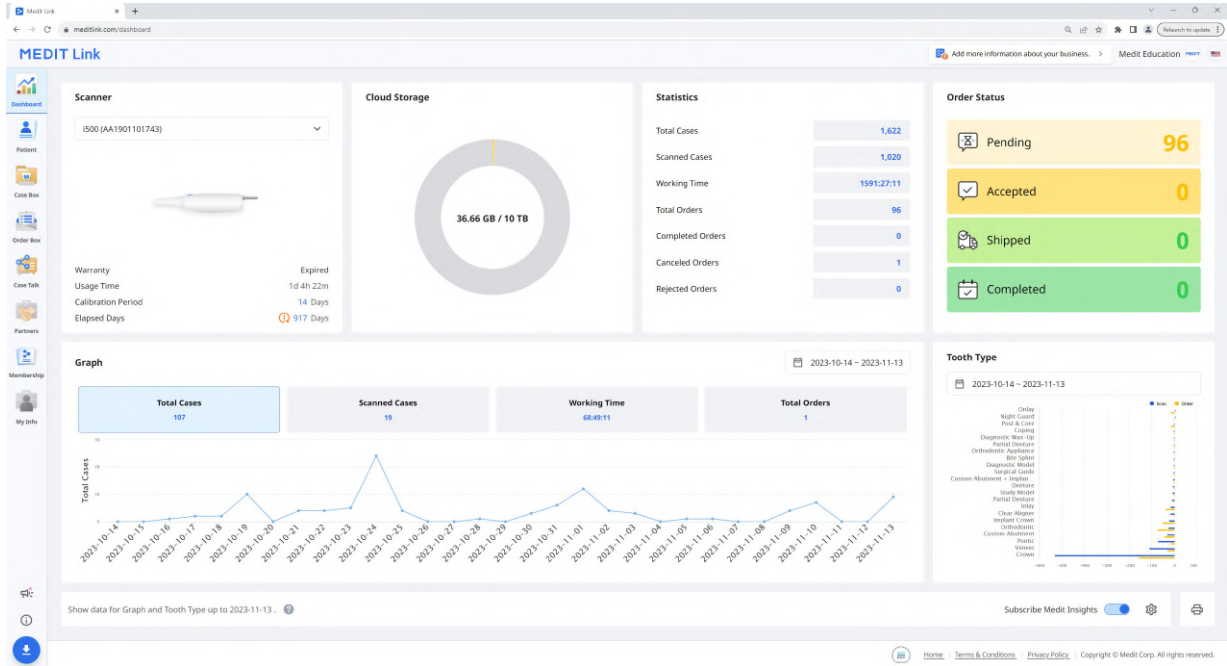


تعرض الرسوم البيانية والمخططات في الـ Dashboard إحصائيات لجميع الأعمال المنجزة في Medit Link.

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الماسح الضوئي   | قم بتوفير معلومات حول الماسحات الضوئية النشطة، بما في ذلك الضمان، وقت استخدام الماسح الضوئي، الفاصل الزمني للمعايرة والوقت المنقضي للمعايرة. |
| التخزين السحابي | عرض السعة الإجمالية للسحابة والمقدار المستخدم.                                                                                               |
| الإحصائيات      | تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة العمل.                                                                                              |
| حالة الطلب      | تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة الطلب.                                                                                              |
| الرسم البياني   | رسم معلومات الوظيفة حسب الفترة الزمنية.                                                                                                      |
| نوع السن        | توفير إحصائيات عن عدد عمليات المسح والطلبات حسب معلومات العلاج.                                                                              |


## Medit Insights

Medit Insights هي خدمة تقارير تساعدك على تحليل إحصائيات الاستخدام الخاصة بك.

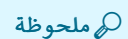

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

Medit Insights •

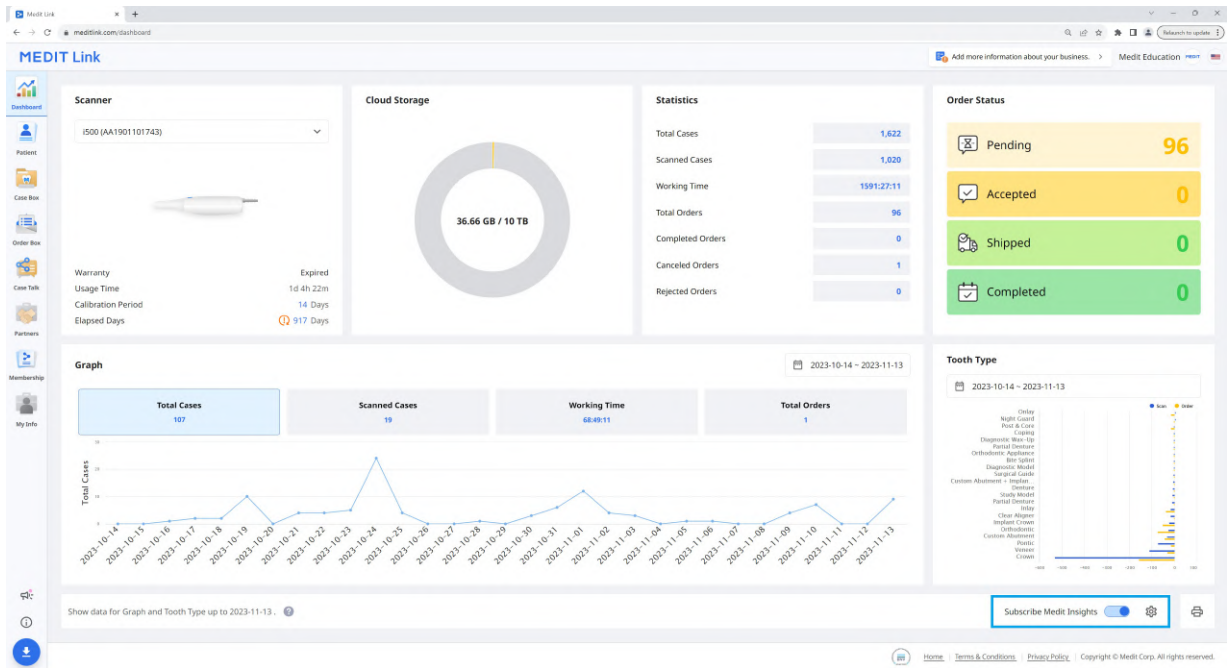

## الاشتراك في Medit Insights

يمكنك تلقي بريد إلكتروني للتقرير في اليوم الثاني من كل شهر. لا يلزم إجراء عملية تسجيل إضافية. قم بتمكين "اشتراك في Medit Insights" فقط إذا كنت لا تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب Medit Link، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي Medit Insights.

### Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

في اليوم الثاني من كل شهر، ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على الإحصائيات، كما هو موضح أدناه.

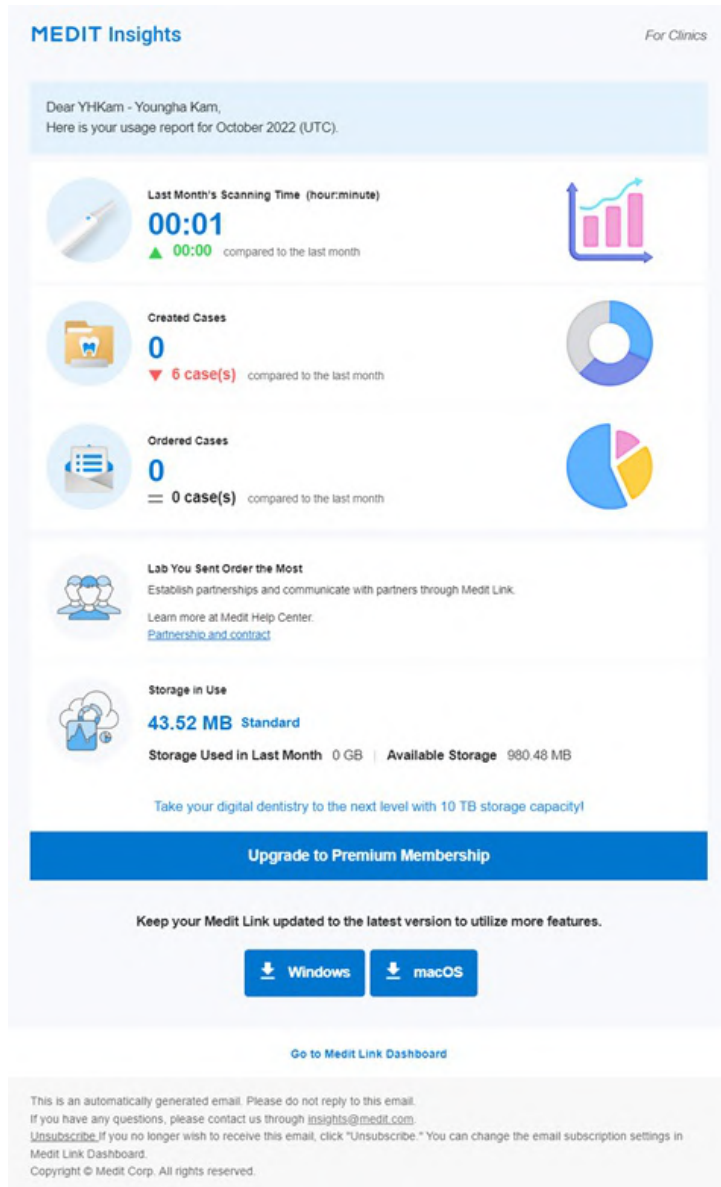

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لافتة               | يوفر Medit نصائح ومعلومات مفيدة هنا. * إذا كنت لا تريد رؤية اللافتة، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "اتفاقية التسويق والترويج" في معلوماتي < حسابي. |
| المعلومات الإحصائية | يتم عرض معلومات الإحصائيات، مثل وقت المسح، والحالات التي تم إنشاؤها، والمختبر الأكثر طلبًا، وما إلى ذلك.                                            |
| تحميل Medit Link    | يوفر الزر رابط تنزيل Medit Link.                                                                                                                    |
| Dashboard           | تستند جميع المعلومات الإحصائية إلى معلومات الـ Dashboard الخاص بك. يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل في الـ Dashboard.                                  |


## إلغاء الاشتراك في Medit Insights

قم بتعطيل "الاشتراك في Medit Insights" في لوحة التحكم أو انقر على "إلغاء الاشتراك" في البريد الإلكتروني المستلم.

## Patient

يمكنك إدارة الحالات بناءً على اسم المريض ورقم تعريف المريض.


يتم عرض جميع المرضى المسجلين من خلال تطبيق Medit Link في القائمة، مما يسهل إدارة المرضى وحالاتهم.

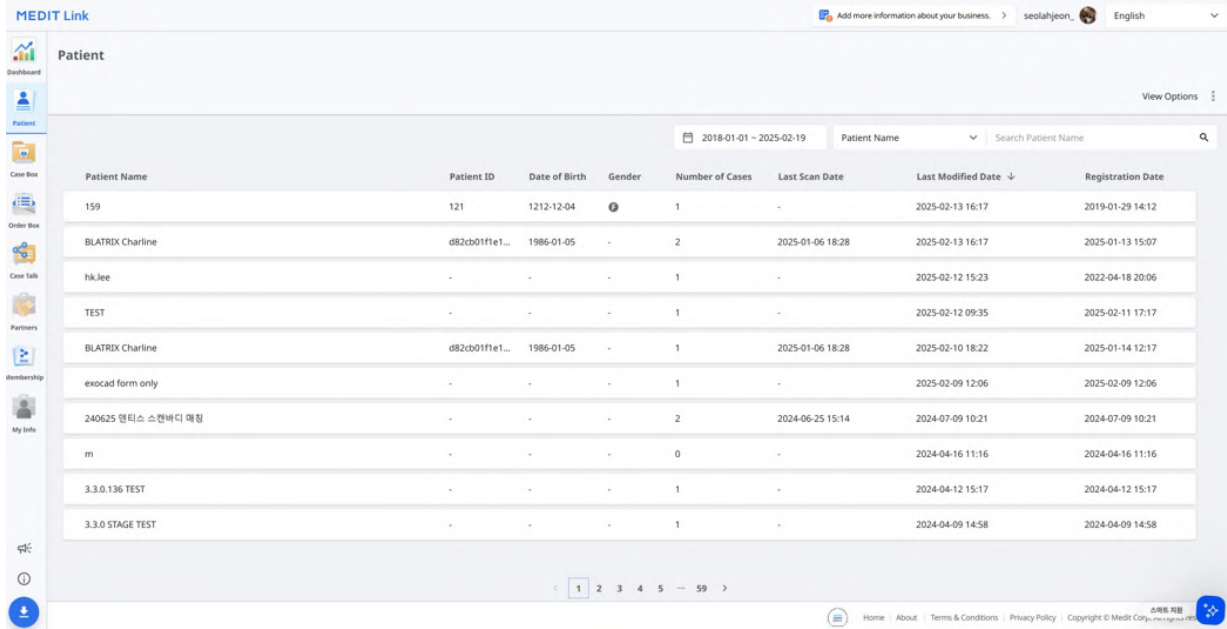

| Patient Name       | Patient ID    | Date of Birth | Gender | Number of Cases | Last Scan Date   | Last Modified Date | Registration Date |
|--------------------|---------------|---------------|--------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 159                | 121           | 1212-12-04    |        | 1               | -                | 2025-02-13 16:17   | 2019-01-29 14:12  |
| BLATRIX Charline   | d82cb01fe1... | 1986-01-05    | -      | 2               | 2025-01-06 18:28 | 2025-02-13 16:17   | 2025-01-13 15:07  |
| hik.lee            | -             | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-12 15:23   | 2022-04-18 20:06  |
| TEST               | -             | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-12 09:35   | 2025-02-11 17:17  |
| BLATRIX Charline   | d82cb01fe1... | 1986-01-05    | -      | 1               | 2025-01-06 18:28 | 2025-02-10 18:22   | 2025-01-14 12:17  |
| exocad form only   | -             | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-09 12:06   | 2025-02-09 12:06  |
| 240625 엘티스 스캔바디 매핑 | -             | -             | -      | 2               | 2024-06-25 15:14 | 2024-07-09 10:21   | 2024-07-09 10:21  |
| m                  | -             | -             | -      | 0               | -                | 2024-04-16 11:16   | 2024-04-16 11:16  |
| 3.3.0.136 TEST     | -             | -             | -      | 1               | -                | 2024-04-12 15:17   | 2024-04-12 15:17  |
| 3.3.0 STAGE TEST   | -             | -             | -      | 1               | -                | 2024-04-09 14:58   | 2024-04-09 14:58  |

## البحث عن المرضى

1. حدد معايير البحث الخاصة بك بين اسم المريض أو رقم تعريف المريض من القائمة المنسدلة الموجودة أعلى يمين قائمة المرضى.

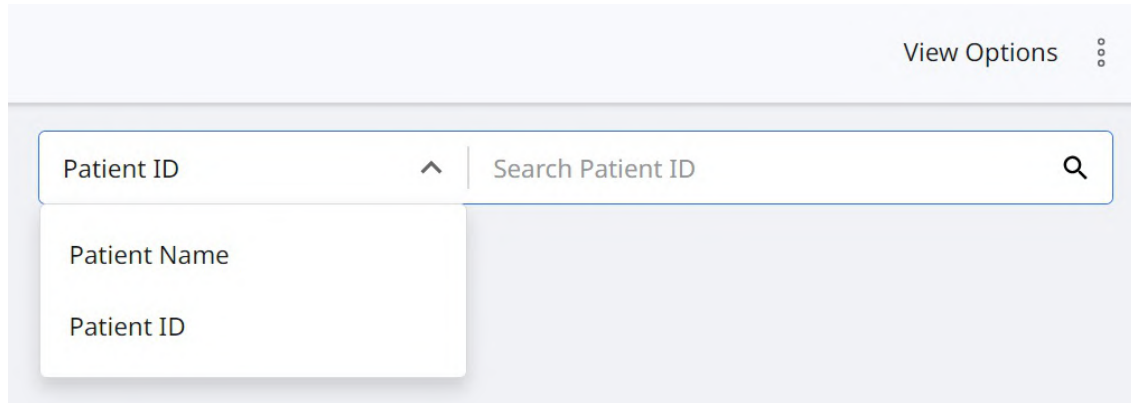

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID

Patient Name


Patient ID

2. أدخل اسم المريض أو رقم تعريف المريض للبحث وفقًا لمعايير البحث المختارة.

3. يتم عرض المرضى الذين لديهم الاسم أو الرقم التعريفي التي تم إدخالهم فقط في القائمة.

## Case Box/Work Box

تظهر الـ Case Box (العيادة) أو الـ Work Box (المختبر) جميع الحالات التي أنشأها المستخدم في تطبيق Medit Link. يمكنك رؤية الملفات عبر متصفح الويب دون تثبيت برنامج منفصل.

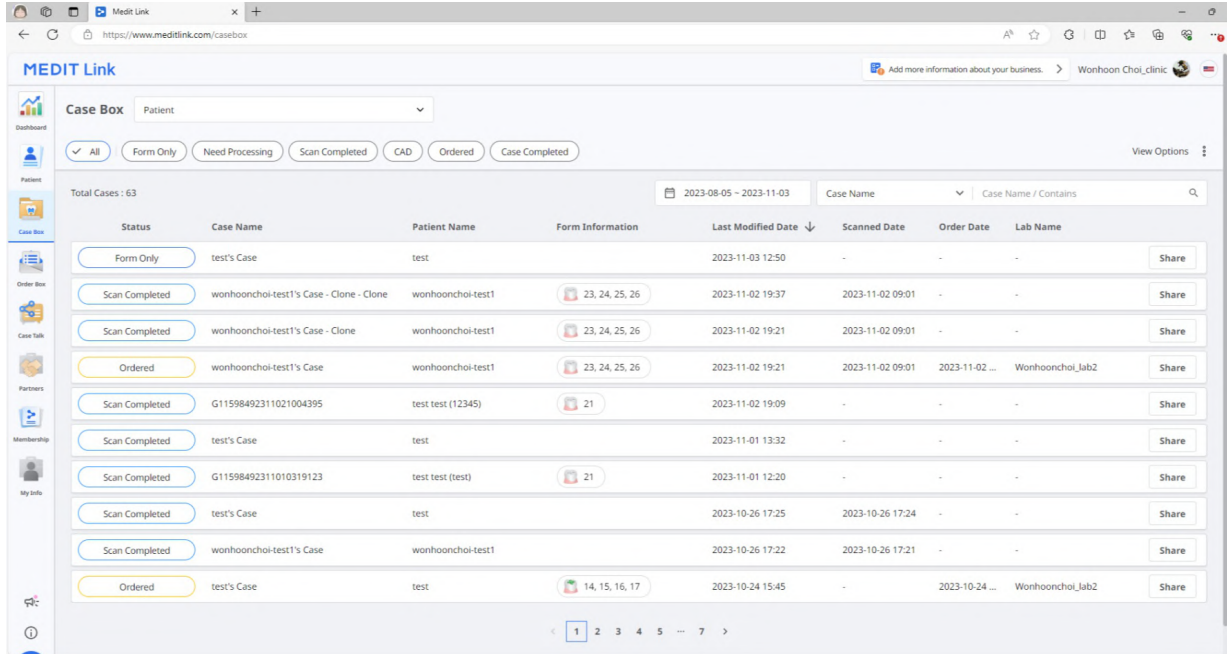


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and has a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A date range selector shows '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar is labeled 'Case Name / Contains'. The table below lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table has 10 rows of data. At the bottom, there's a pagination bar showing '1' of 7 pages.

| Status         | Case Name                                | Patient Name      | Form Information | Last Modified Date | Scanned Date     | Order Date     | Lab Name         |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Form Only      | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-03 12:50   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:37   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone         | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                |
| Ordered        | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | 2023-11-02 ... | Wonhoonchoi_Lab2 |
| Scan Completed | G11598492311021004395                    | test test (12345) | 21               | 2023-11-02 19:09   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-01 13:32   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | G11598492311010319123                    | test test (test)  | 21               | 2023-11-01 12:20   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-10-26 17:25   | 2023-10-26 17:24 | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 |                  | 2023-10-26 17:22   | 2023-10-26 17:21 | -              | -                |
| Ordered        | test's Case                              | test              | 14, 15, 16, 17   | 2023-10-24 15:45   | -                | 2023-10-24 ... | Wonhoonchoi_Lab2 |

## فلتر الحالات

## فلتر حسب المريض

يمكنك فلتر الحالات حسب المرضى. إنها مفيدة عندما تبحث عن حالات لمرضى محددين.

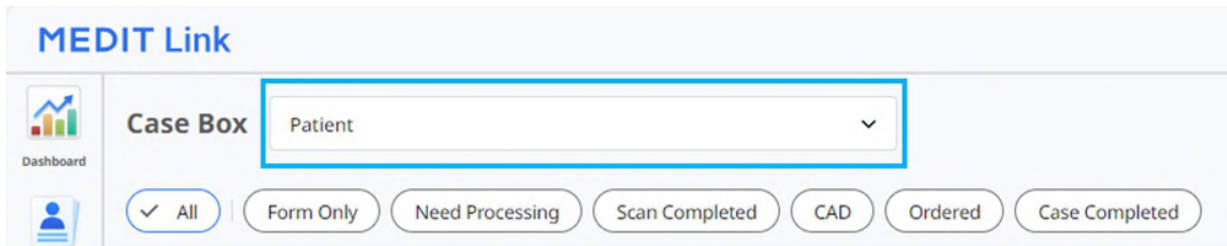

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing 'Patient' as the selected filter. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. أدخل اسم مريض في حقل البحث.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test\_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. اختر مريضًا من قائمة نتائج البحث.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test\_initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

**Selected Patients**

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☒ test / - / - / -

3. يتم عرض الحالات الخاصة بالمرضى المحددين فقط في القائمة، مما يسهل العثور على الحالات التي تريد العمل عليها.

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a 'Patient' dropdown. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'Scan Completed' filter is selected. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table shows 10 cases, with the first one being 'test's Case' and the last one being 'test's Case'.

## الفلتر حسب الحالة

يمكنك فلتر الحالات بناءً على حالاتها.

- يمكن للمستخدم النقر على الحالة التي يريد عرضها. سيعرض المتصفح فقط الحالات ذات الحالة المختارة.
- يمكن للمستخدم تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

يتم توفير أنواع الحالات التالية بناءً على نوع الحساب:

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed | Case Box (العيادة) |
| All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done                     | Work Box (المختبر) |

## الفلتر حسب المدة

يمكنك فلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة التي حددتها.

1. انقر على فلتر المدة.

2. حدد النطاق.

**From**  **To**

- الكل: إظهار كل الحالات.

- النطاق المُخصص: حدد تاريخي البدء والانهاء لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال تلك الفترة.
- اليوم: عرض الحالات التي عدّلت اليوم.
- أمس: عرض الحالات التي عدّلت أمس.
- آخر 7 أيام: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 7 أيام، باستثناء اليوم.
- آخر 30 يومًا: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 30 يومًا، باستثناء اليوم.
- آخر 90 يومًا: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 90 يومًا، باستثناء اليوم.
- هذا الشهر: عرض حالات هذا الشهر.
- الشهر السابق: عرض حالات الشهر السابق.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

## الفترة حسب البحث

يمكنك الاستفادة من إمكانيات البحث للبحث عن المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

يتم توفير خيارات البحث التالية بناءً على نوع الحساب:

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر | Case Box (العيادة) |
| اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب  | Work Box (المختبر) |

## تفاصيل الحالة

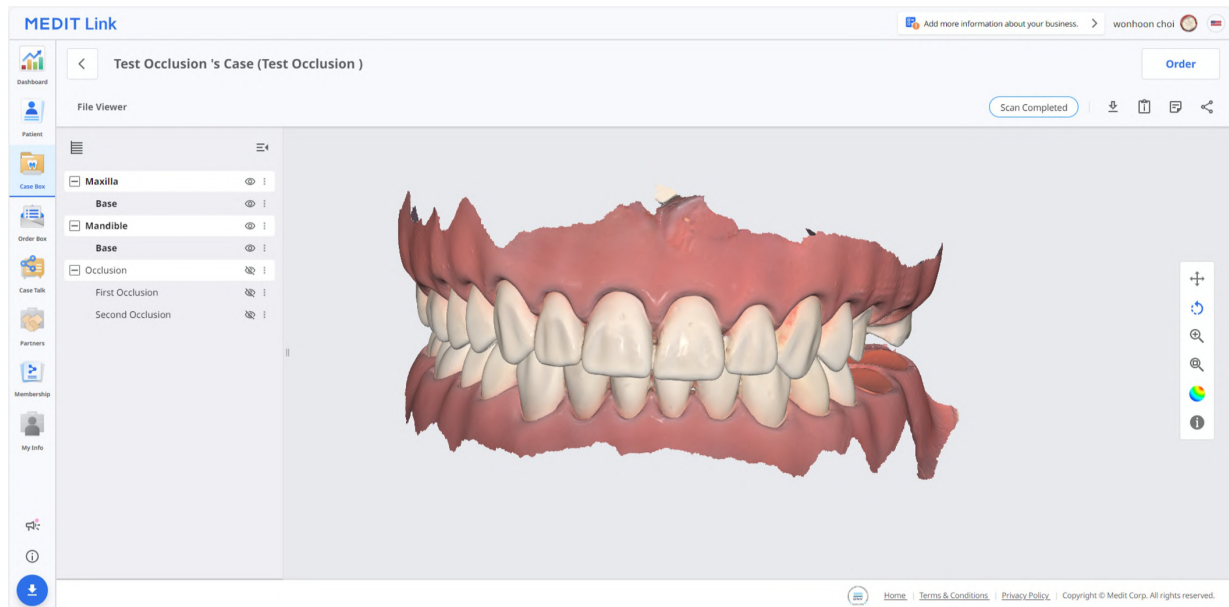

يتم توفير أدوات إدارة الحالة التالية في Case Box/Work Box.

|                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض حالة الحالة.                                                                                                                                                         | حالة الحالة                |                                                                                     |
| توفير اختصار للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box؛ In Box ↔ Work Box).                                                                                          | انتقل إلى Order Box/In Box |  |
| تنزيل الملفات الموجودة في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.                                                                                                              | تنزيل                      |  |
| راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.                                                                                                                           | معلومات الحالة             |  |
| أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.                                                             | المذكرة والعلامات          |  |
| قم بإنشاء رابط للمشاركة.<br>يمكن للمستخدمين الذين لديهم رابط مشترك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في مستعرض مثل Chrome أو Firefox أو Safari بدون تثبيت برامج إضافية. | مشاركة                     |  |

## Order Box/In Box

يعرض Order Box (العيادة) أو In Box (المختبر) الحالات المطلوبة في تطبيق Medit Link.

### تفاصيل الطلب

|   |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | عرض اسم الحالة واسم المريض.                                                                                                              |
| 2 | توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).                                                                          |
| 3 | إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات                                                                                        |
| 4 | عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.            |
| 5 | عرض المعلومات التفصيلية للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات. |
| 6 | عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.                                                                                                |


### علامات التبويب في Order Box/In Box

| طلب                                                                                                                                                 | عارض الملفات                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحقق من المعلومات التفصيلية الخاصة بالطلب، مثل رقم تعريف الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات. | تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة. |

## Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو أعضاء مسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال "Case Talk" في تطبيق Medit Link و موقع Medit Link.

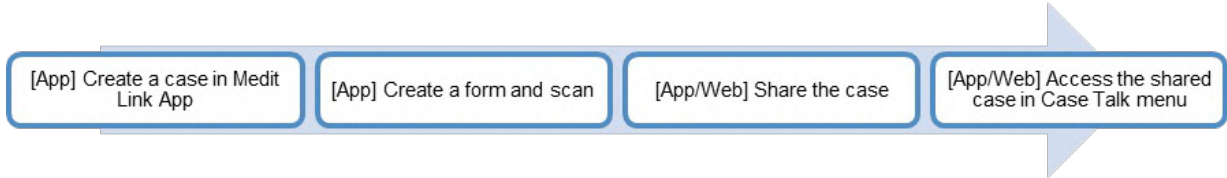

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة التواصل في ما يتعلق بالبيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.


## إنشاء Case Talk

يمكنك إنشاء رابط مشترك لحالة تم إنشاؤها في Case Box/Work Box.

1. ابحث عن حالة تريد مشاركتها وانقر على الزر "مشاركة" على اليمين.

| Status         | Case Name                                | Patient Name      | Form Information | Last Modified Date | Scanned Date     | Order Date     | Lab Name         |       |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| Form Only      | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-03 12:50   | -                | -              | -                | Share |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:37   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                | Share |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone         | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                | Share |
| Ordered        | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | 2023-11-02 ... | Wonhoonchoi_Lab2 | Share |
| Scan Completed | G11598492311021004395                    | test test (12345) | 21               | 2023-11-02 19:09   | -                | -              | -                | Share |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-01 13:32   | -                | -              | -                | Share |
| Scan Completed | G11598492311010319123                    | test test (test)  | 21               | 2023-11-01 12:20   | -                | -              | -                | Share |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-10-26 17:25   | 2023-10-26 17:24 | -              | -                | Share |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 |                  | 2023-10-26 17:22   | 2023-10-26 17:21 | -              | -                | Share |
| Ordered        | test's Case                              | test              | 14, 15, 16, 17   | 2023-10-24 15:45   | -                | 2023-10-24 ... | Wonhoonchoi_Lab2 | Share |

2. حدد الملفات التي تريد مشاركتها.

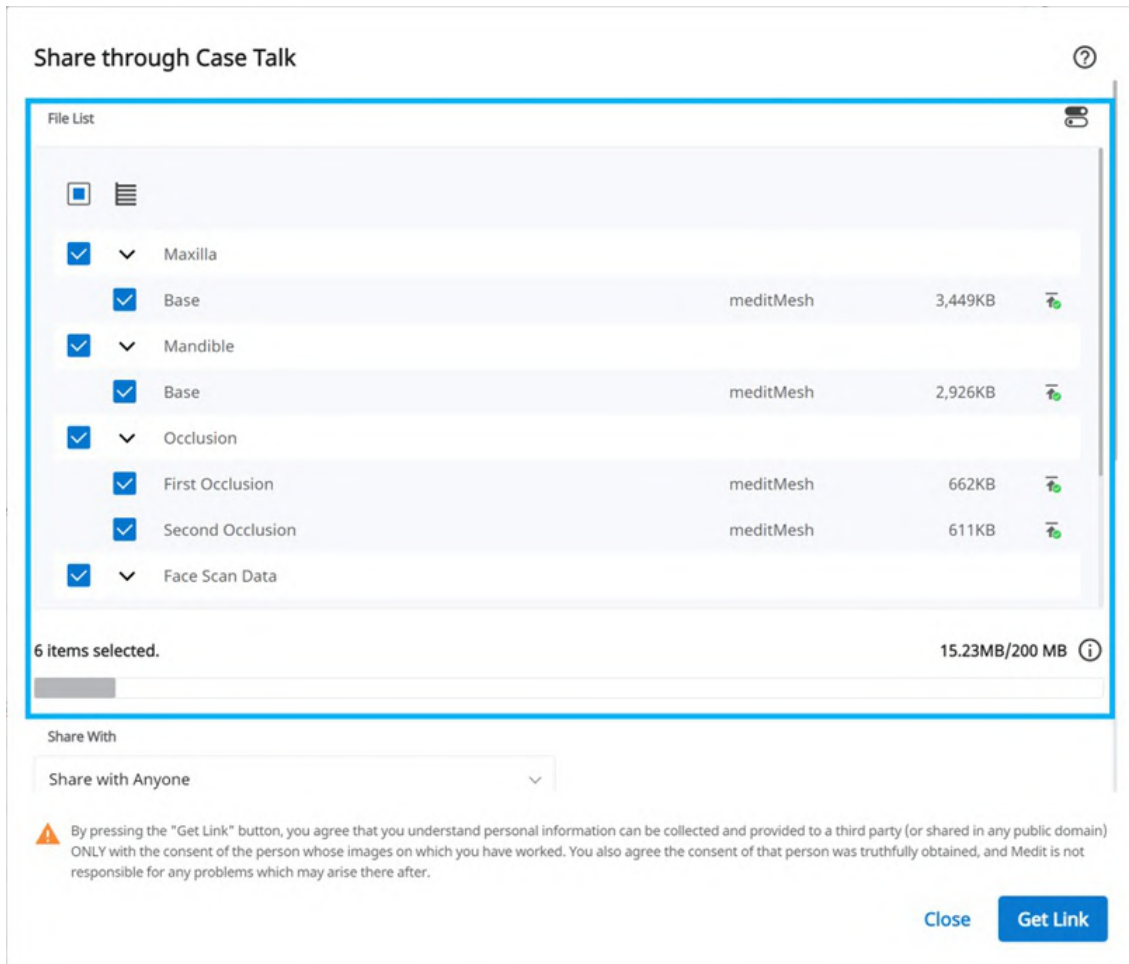

3. قم بتعيين نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة.

4. انقر على "الحصول على رابط" لإنشاء رابط مشترك.

## تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة

## Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via



PIN Code



PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.  
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024



By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المشاركة مع           | <ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة مع أي شخص</li> <li>يتم إنشاء رابط مشترك. يمكنك مشاركة الملفات مع أي شخص.</li> <li>المشاركة مع أشخاص معينين</li> <li>يتم إنشاء رابط مشترك وإرساله إلى أشخاص محددين.</li> </ul>             |
| المشاركة عبر          | <p>إذا حددت "مشاركة مع أشخاص معينين"، فيمكنك مشاركة الرابط مع أشخاص معينين بطرق مختلفة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عنوان البريد الإلكتروني</li> <li>رسالة قصيرة</li> <li>Partners</li> </ul>                              |
| تاريخ انتهاء الصلاحية | <p>تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرابط. بعد انتهاء صلاحية الرابط، لن يتمكن الأشخاص الذين شاركته معهم من الوصول إلى الملفات.</p> <p>يمكنك تمديد فترة الصلاحية حتى 90 يومًا ابتداءً من اليوم.</p>                                              |
| الرقم السري           | <p>قم بتعيين رمز وصول مكون من 6 أرقام لضمان أمان البيانات.</p>                                                                                                                                                                            |
| مشاركة اسم المريض     | <p>إذا حددت هذا الخيار، فسيرى جميع الأشخاص الذين لديهم الرابط اسم المريض.</p>                                                                                                                                                             |
| منح إذن التنزيل       | <p>إذا قمت بتحديد هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين الذين لديهم الرابط من تنزيل الملفات.</p>                                                                                                                                             |
| إتاحة التعليقات       | <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستتمكن من التواصل من خلال الرابط المُشارك.</li> <li>إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار، سيتمكن المستلم من عرض تعليقاتك فقط ولكن لن يتمكن من إضافة تعليقاته الخاصة.</li> </ul> |
| تعليق                 | <p>يمكنك ترك رسالة في قسم التعليقات.</p>                                                                                                                                                                                                  |

## تفاصيل Case Talk

يمكنك رؤية الملفات في الحالة المتشاركة. تتوفر الوظائف التالية في صفحة تفاصيل Case Talk.

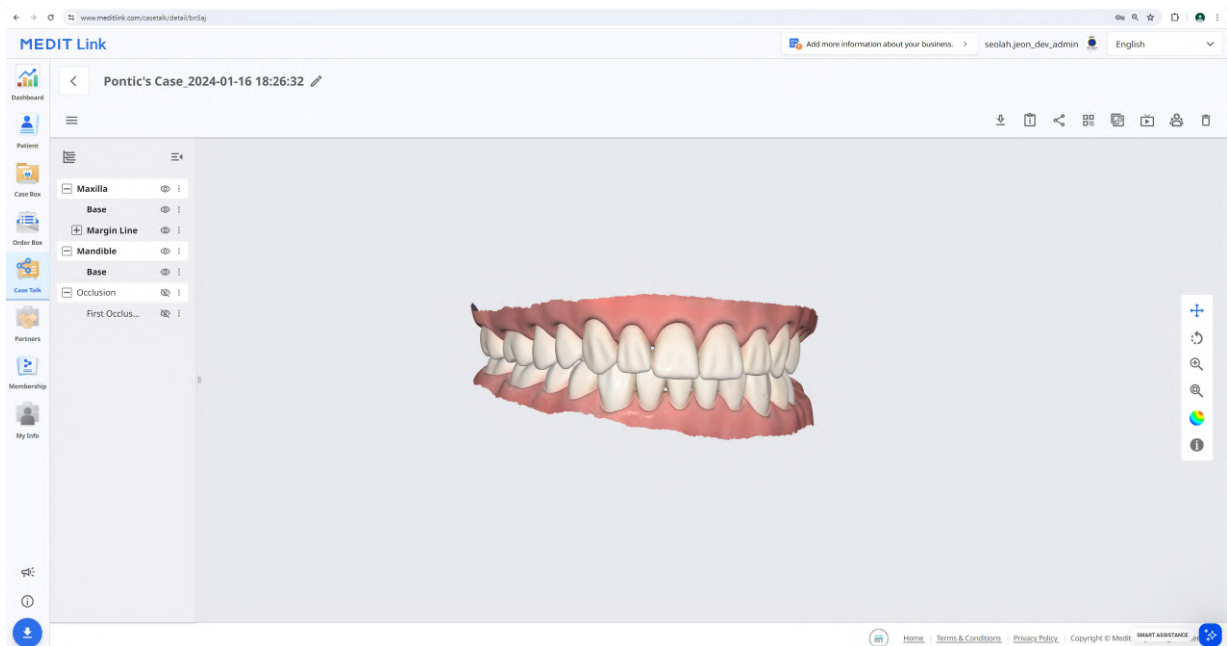

|                                                                                      |                       |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | تنزيل                 | قم بتنزيل جميع الملفات في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.                                     |
|   | معلومات الحالة        | عرض معلومات مفصلة عن القضية.                                                                    |
|   | مشاركة                | قم بتعديل إعدادات المشاركة.                                                                     |
|   | رمز الاستجابة السريعة | مشاركة الحالة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.                                                   |
|   | نسخ الرابط            | انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك. |
|   | بث مباشر              | شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين.<br>تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.          |
|   | الحاضرين              | إظهار كافة المستخدمين الذين يدخلون الرابط المشترك.                                              |
|  | حذف                   | حذف الرابط المشترك. لم يعد الرابط المشترك المحذوف قابلاً للوصول.                                |

#### ملاحظة


الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

## Web Viewer

يمكنك عرض البيانات المشتركة من خلال Case Talk في متصفح الويب.

من الممكن التواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الرابط باستخدام الملاحظات والتعليقات.

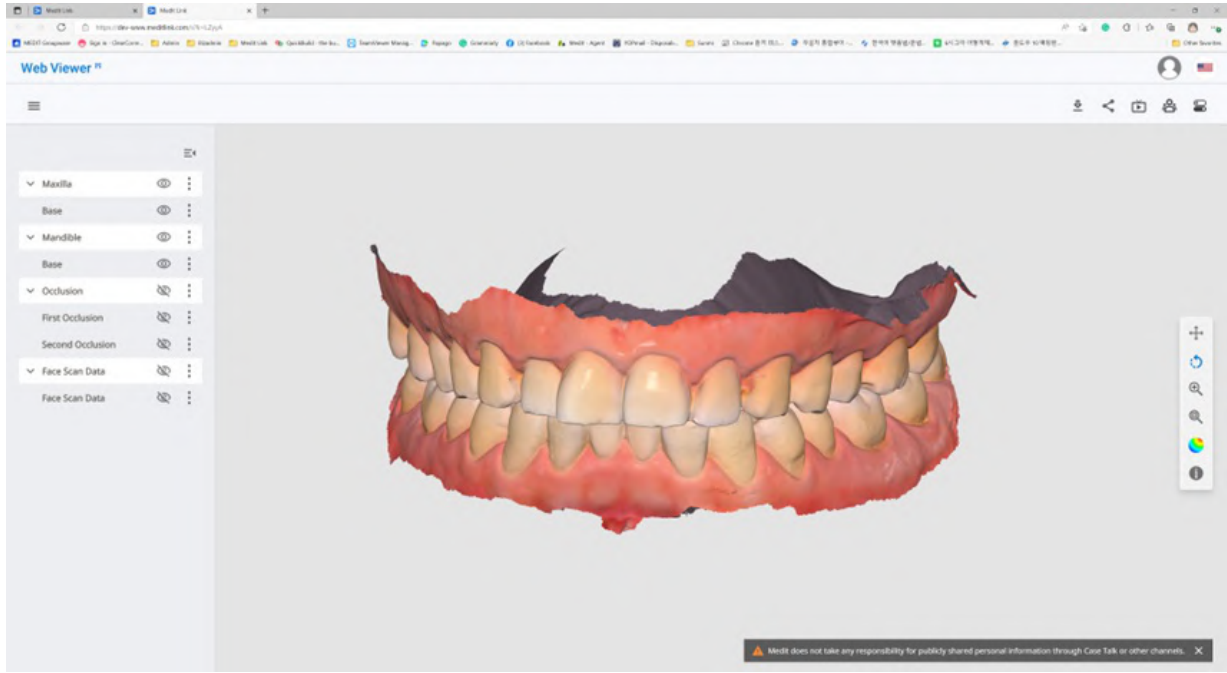

|                                                                                        |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| قم بتنزيل جميع الملفات في هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر.                               | تنزيل                 |  |
| عرض معلومات مفصلة عن القضية.                                                           | معلومات الحالة        |  |
| تعديل إعدادات المشاركة.                                                                | مشاركة                |  |
| مشاركة الحالة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.                                          | رمز الاستجابة السريعة |  |
| شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين.<br>تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين. | بث مباشر              |  |
| إظهار كافة المستخدمين المتصلين بالرابط المتشارك.                                       | الحاضرين              |  |
| تغيير نظام ترقيم الأسنان.                                                              | ترقيم الأسنان         |  |


#### ملاحظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

التعليق

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى موقع محدد على النموذج ثلاثي الأبعاد. يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض التعليقات التوضيحية التي تضيفها.

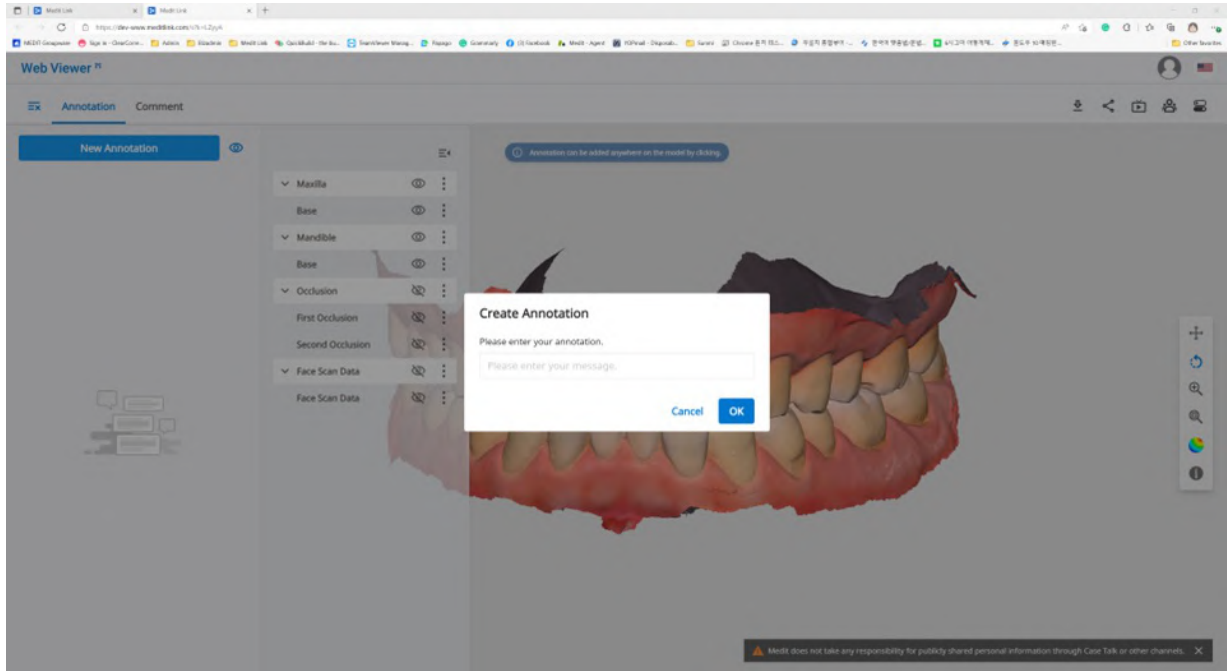

ملاحظة 🔍

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• التعليق

1. ابحث عن رمز القائمة أعلى الزاوية اليسرى وحدد علامة التبويب "تعليق". استخدم زر "تعليق جديد" لإضافة تعليق توضيحي في أي مكان على البيانات بنقرة واحدة.
2. اكتب الرسالة، ثم انقر على "OK" لحفظها.

### Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية كقناة اتصال بسيطة. انقر على التعليق التوضيحي الذي تم إنشاؤه لإدخال الرد واضغط على "إرسال".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

التعليقات

يمكنك التواصل مع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الرابط من خلال علامة التبويب "تعليق" في قائمة الـ Web Viewer.

#### ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- تعليق

## مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي

يمكنك مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي.

#### ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر

1. انقر على "بث مباشر" لمشاركة شاشة الـ Web Viewer مع المستخدمين المتصلين.



2. انقر على "OK" لبدء مشاركة شاشتك.

3. يجب على الأشخاص الآخرين الذين قاموا بالوصول إلى الرابط قبول مشاركة الشاشة.

4. يتم عرض شاشة المستخدم الذي بدأ مشاركة الشاشة متزامنة مع شاشة الشخص الذي استلم الطلب.

## شجرة البيانات

يتم تجميع جميع البيانات وعرضها وفقًا للسماح الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك إظهار البيانات أو إخفاؤها، وضبط العتامة، وما إلى ذلك.

## التحكم بشجرة البيانات





# Partners

يمكنك البحث عن شركاء محتملين لطلب الشراكة والاطلاع على قائمة الشركاء الحاليين.


## ملحوظة

الخدمات التي تستخدم Google Maps غير متوفرة على Medit Link China.

## البحث عن شركاء


يمكنك البحث عن مستخدمي Medit Link بناءً على اسم الشركة و/أو العنوان.

في نتائج البحث، يمكنك إرسال طلب شراكة إلى الشركة التي ترغب في العمل معها.

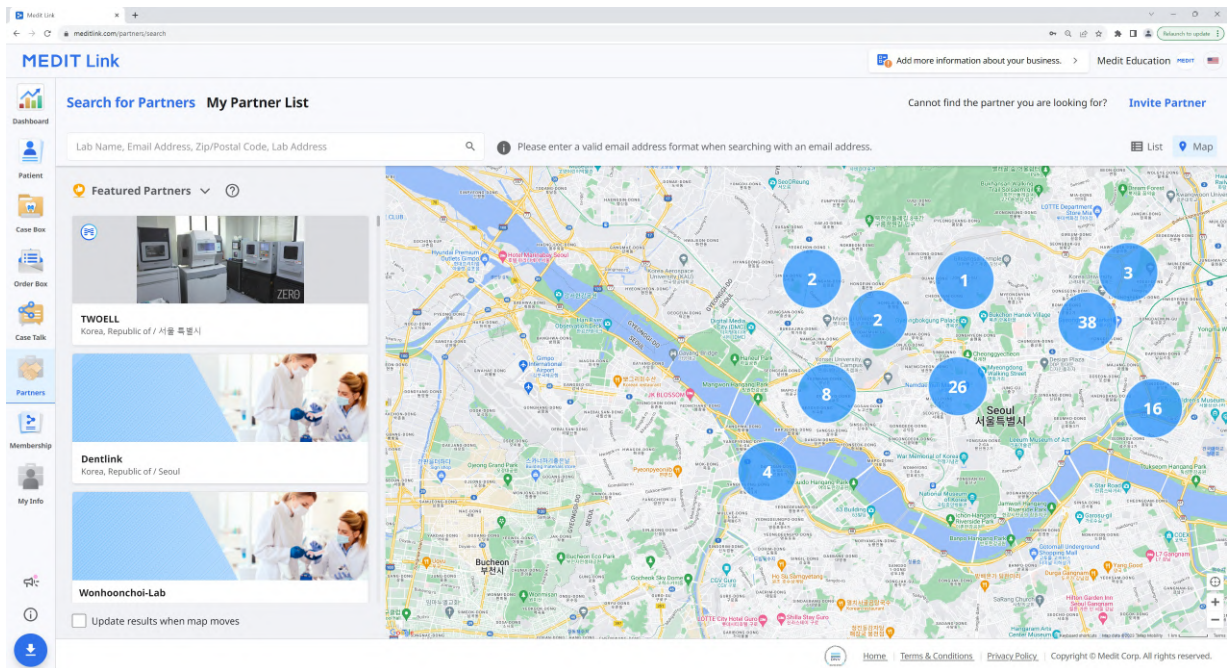

## قائمة شركائي

يمكنك مراجعة شركاتك الحالية مع جميع شركائك الحاليين في قائمة شركائي.

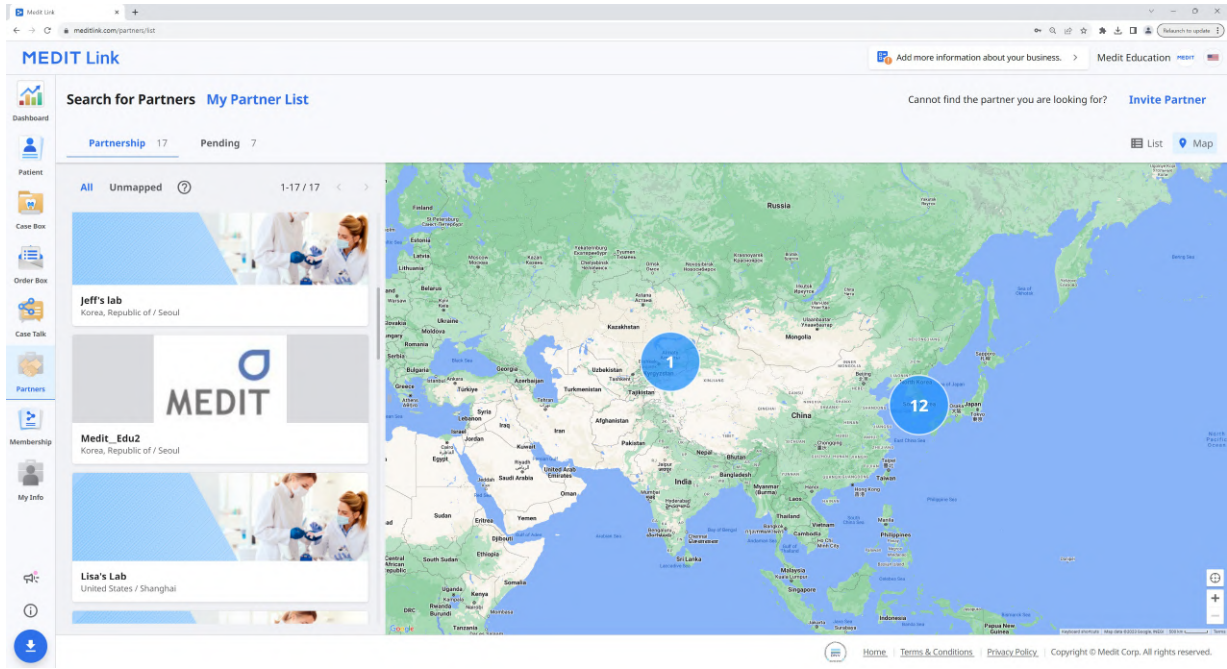

## دعوة شركاء

إذا كان هناك عيادة أو مختبر ترغب في العمل معه، يمكنك دعوتهم للانضمام إلى Medit Link. سيتم تشكيل الشراكة تلقائيًا بمجرد قبول الدعوة.

1. انقر على "دعوة شريك" في الجزء العلوي الأيسر من شاشتك.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في العمل معها وأرسل لها دعوة مع طلب شراكة.



## Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. بمجرد قبول المنظمة المدعوة الدعوة والاشتراك في Medit Link، سيتم إنشاء الشراكة تلقائيًا.

# Membership

عضوية

The screenshot displays the 'Medit Link' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Medit Link' on the left and user information 'seolahyeon\_' and 'English' on the right. Below this is a sub-navigation bar with 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Medit Cloud Storage Plan', shows the '2 GB Plan' and '10 TB Plan' tabs. The '10 TB Plan' is selected, showing a 'Free (Promotion)' status with a 'Subscribe' button. Below this, it lists '10 TB Plan Benefits' and shows a '10 TB Plan' card with a '10 TB Plan' label and a '10 TB Plan' button. The right column, titled 'Cloud Storage', shows a 'Set Period' dropdown set to '2018-01-01 ~ 2025-02-17'. It features a circular progress indicator showing '3.46 GB / 10 TB'. Below this, there's a table of storage usage:

| Category                   | Storage Used |
|----------------------------|--------------|
| Total Selected             | 0.00 KB      |
| Raw Data                   | 52.36 GB     |
| Result Files & Attachments | 3.46 GB      |

The bottom of the page has a footer with links to 'Home', 'About', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Co., Ltd.'.

## Medit Cloud Storage Plan

يمكنك معاينة ما تقدمه كل خطة، بما في ذلك قسائم الخصومات، وحالة اشتراك الحالية. يمكنك ترقية خطتك أو إلغاء اشتراكك في أي وقت.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

يوفر Medit Link خطط التخزين السحابي التالية :

#### 2GB Plan

- خطة إعتيادية مجانية لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول
- 2 GB من التخزين السحابي
- للمستخدمين الجدد

#### 10TB Plan


- خطة اشتراك مدفوعة
- 10 TB من التخزين السحابي
- للمستخدمين ذوو الحالات المتعددة والبيانات المختلفة
- نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد

| 10TB Plan                                                        | 2GB Plan |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| TB 10                                                            | GB 2     | التخزين السحابي |
| \$9.99 في الشهر                                                  | مجاني    | الرسوم الشهرية  |
| * لا يحتسب التخزين السحابي البيانات الخام ضمن المساحة المستخدمة. |          |                 |

ستكون خطط العضوية متاحة على Medit Link China. يمكنك الاستمتاع بال 10TB Plan مجاناً حتى الإصدار الرسمي للميزة.

## التخزين السحابي

في القسم الأيمن، يمكنك إدارة التخزين السحابي الخاص بك.

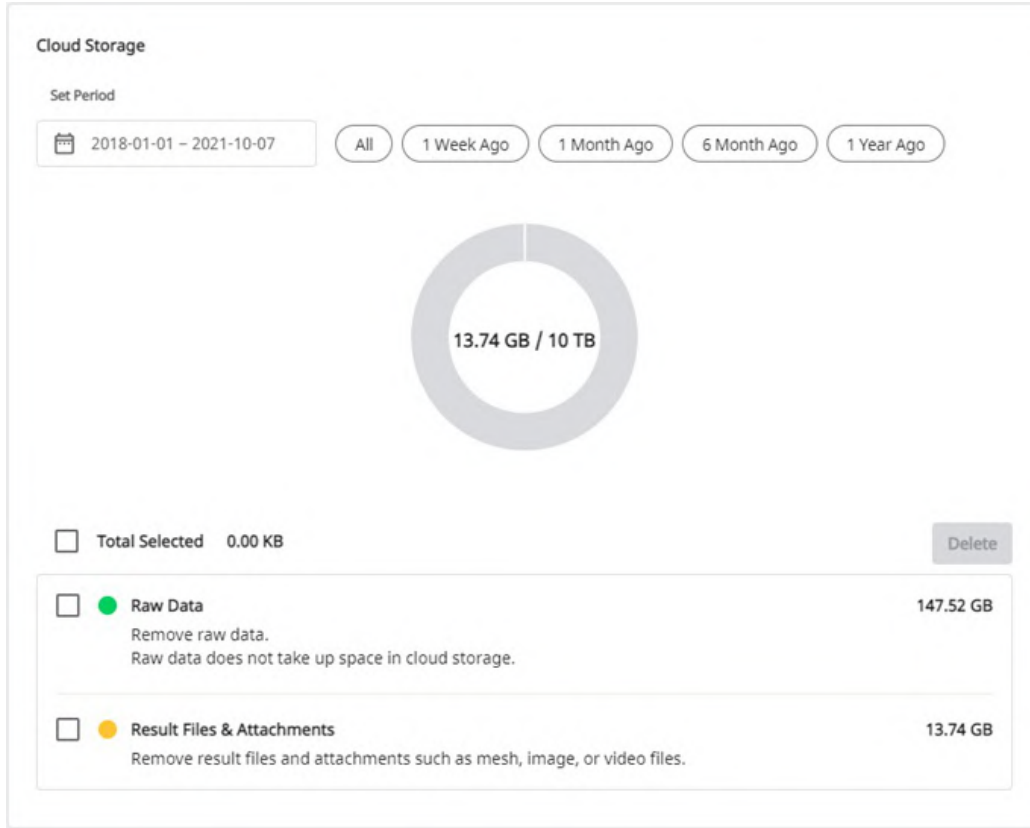

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفترة المحددة     | <ul style="list-style-type: none"> <li>الكل: رؤية كل الملفات.</li> <li>منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ أسبوع على إنشائها.</li> <li>منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ شهر على إنشائها.</li> <li>منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مَرَّت ستة أشهر على إنشائها.</li> <li>منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ عام على إنشائها.</li> </ul> |
| البيانات الخام     | لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الخام من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة.                                                                                                                                                  |
| النتائج & المرفقات | تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في السحابة. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.                                                                                                                                                                                                  |
| حذف                | قم بإزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## الاشتراك

إذا كنت مشتركاً حالياً في ال 2GB Plan أو ال 10TB Plan مع رمز الاسترداد، يمكنك الاشتراك في ال 10TB Plan.

يتم إتمام الدفع من خلال خدمة Stripe على [www.stripe.com](https://www.stripe.com).

1. انتقل إلى < Medit Cloud Storage Plan < 10TB Plan Membership وانقر على زر "اشتراك".

#### Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan 10 TB Plan


**Free** (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. تحقق من وصف الـ 10TB Plan وانقر على "اشتراك" مرة أخرى.

### Subscribe Membership

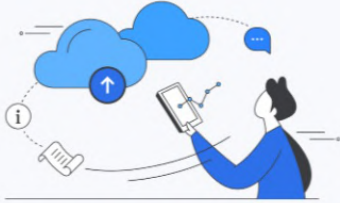

## 10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

\* VAT is not included.  
\* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel

Subscribe

3. تحقق من السعر والشروط وأدخل المعلومات اللازمة للدفع. بعد ذلك، انقر على "اشتراك".

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

**\$0.00**  
Then \$9.99 per day after coupon expires

|                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics</b><br>Medit Cloud Storage Plan<br>Billed daily | <b>\$9.99</b>  |
| <b>Subtotal</b>                                                                              | <b>\$9.99</b>  |
| <b>1 Month Free for New Subscribers</b><br>100% off for a day                                | <b>-\$9.99</b> |
| <b>Tax</b> ⓘ                                                                                 | <b>\$0.00</b>  |
| <b>Total due today</b>                                                                       | <b>\$0.00</b>  |

#### Pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234    

MM / YY CVC 

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

**Subscribe**

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by  Terms Privacy

4. قد يستغرق الدفع عدة ثوان. عند الانتهاء، سترى رسالة التأكيد.

#### Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close


#### إلغاء الاشتراك

يمكنك إلغاء اشتراكك في أي لحظة. بعد الإلغاء، لا يزال بإمكانك استخدام الـ 10TB Plan للأيام المتبقية من ذلك الشهر المدفوع. سيتم تغيير خطتك إلى الـ 2GB Plan اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 2GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابي، لن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تكون وظائف الطلب والمشاركة متاحة.

1. انقر على "إلغاء الاشتراك".

2. انقر على "إيقاف الاشتراك".

### Cancel Subscription

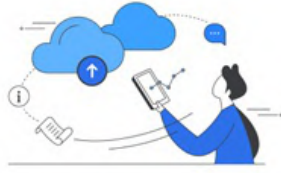

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.

Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.  
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

\*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. لتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك، انقر على "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى في النافذة المنبثقة الجديدة.

### Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. تم إلغاء اشتراكك.

### Confirm Subscription Cancellation

Your subscription has been canceled.

You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.


If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. سيتم تغيير خططك إلى الـ 2GB Plan اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 2GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابي، لن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تكون وظائف الطلب والمشاركة متاحة.

اشترائي

يمكنك عرض تفاصيل اشتراكك الحالي أو تجديد الاشتراك أو إلغائه من اشتراكك. يمكنك أيضًا تغيير طريقة الدفع، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من الدفعة المجدولة التالية.

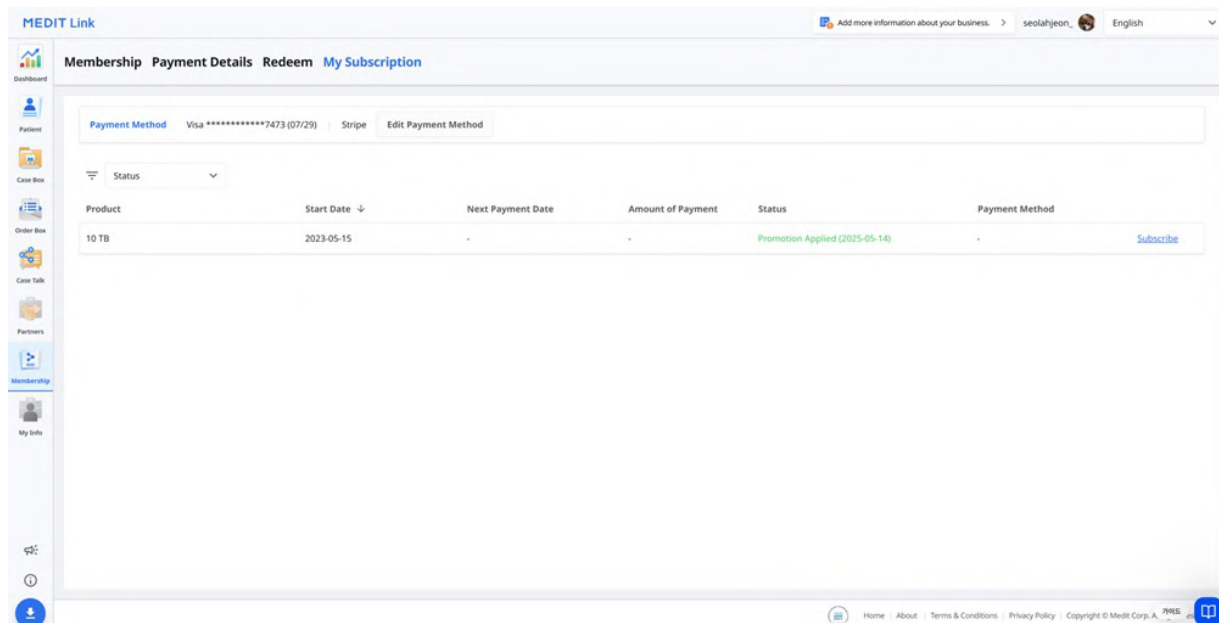

## التفاصيل

| العنصر             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنتج             | يعرض نوع الاشتراك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاريخ البدء        | يعرض وقت بدء الاشتراك أو العرض الترويجي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاريخ الدفع التالي | يعرض تاريخ الدفع التالي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مبلغ الدفع         | يعرض مبلغ الدفع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحالة             | <p>الاشتراك</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نشط: الاشتراك نشط.</li> <li>جاري انتهاء الصلاحية: لن يتم تجديد الاشتراك في تاريخ الدفع التالي وسيتم إلغاؤه.</li> <li>منتهي الصلاحية: انتهى الاشتراك.</li> </ul> <p>اسم العرض</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>العرض مطبق: رمز العرض مفعل الآن.</li> <li>العرض معلق: رمز العرض في انتظار التفعيل.</li> <li>انتهت صلاحية العرض: انتهت صلاحية رمز العرض.</li> </ul> |
| طريقة الدفع        | يعرض آخر أربعة أرقام من البطاقة المستخدمة للدفع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## إعادة الاشتراك

| العنصر              | الوصف                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| خطة التخزين السحابي | انقر على زر الاشتراك لإعادة الاشتراك في الـ 10TB Plan. |
| خطة اشتراك التطبيق  | سجل الدخول إلى التطبيق لإعادة الاشتراك.                |

## كيفية إضافة طريقة دفع

1. انقر على "تعديل طريقة الدفع."

| Product | Start Date | Next Payment Date | Amount of Payment   | Status | Payment Method                                  |
|---------|------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 10 TB   | 2025-02-19 | 2025-02-20        | 0.605 USD / Monthly | Active | MasterCard ****7154 <a href="#">Unsubscribe</a> |

2. انقر على "إضافة طريقة دفع."

PAYMENT METHOD

Mastercard \*\*\*\* Default Expires 03/2029

+ Add payment method

3. أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على "أضف."

## Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow MEDIT USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. سيتم تعيين طريقة الدفع المضافة كطريقة افتراضية واستخدامها للدفع التالي.

#### PAYMENT METHODS

|                                                                                                                       |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  Visa •••• 4242 <span>Default</span> | Expires 04/2044 | ×   |
|  Visa •••• 4242                      | Expires 05/2025 | ... |
| + Add payment method                                                                                                  |                 |     |

## كيفية تغيير طريقة الدفع

1. انقر على رمز القائمة الموسعة بجوار طريقة الدفع التي تريد تغييرها في نافذة حوار الفوترة.

#### PAYMENT METHODS

|                                                                                                                       |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  Visa •••• 4242 <span>Default</span> | Expires 04/2044 | ×   |
|  Visa •••• 4242                      | Expires 05/2025 | ... |
| + Add payment method                                                                                                  |                 |     |

2. انقر على "جعله افتراضيًا" لتعيين البطاقة المحددة كطريقة الدفع الافتراضية.

#### CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

**\$9.99 per day**

[View details](#) ✓

Your subscription renews on February 20, 2025.

#### PAYMENT METHODS

|                                                                                                                         |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  Visa •••• 4242 <span>Default</span> | Expires 04/2044 | ×   |
|  Visa •••• 4242                      | Expires 05/2025 | ... |
| + Add payment method                                                                                                    |                 |     |
| <div>Make default<br/>Delete</div>                                                                                      |                 |     |

## الاسترداد

يمكنك استرداد رمز عرض للوصول إلى الـ 10TB Plan مجاناً.

MEDIT Link Add more information about your business. seolah\_jeon\_dev\_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Redeem Code

All

| Product | Promotion | Code Number                | Registration Date   | From       | To         | Status     |         |
|---------|-----------|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4       | Premium   | 4 Clinic Premium Promotion | 2A6F-0125-6747-4A87 | 2022-03-16 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | Waiting |

Cancel

1

Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp.

| العنصر        | الوصف                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنتج        | يعرض الخطة التي يتم تطبيق العرض عليها.                                                                                                                                                                                          |
| اسم العرض     | يعرض اسم العرض.                                                                                                                                                                                                                 |
| رقم الرمز     | يعرض رقم الرمز.                                                                                                                                                                                                                 |
| تاريخ التسجيل | يعرض تاريخ تسجيل الرمز.                                                                                                                                                                                                         |
| من            | يعرض تاريخ بدء العرض.                                                                                                                                                                                                           |
| إلى           | يعرض تاريخ انتهاء صلاحية العرض.                                                                                                                                                                                                 |
| الحالة        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registered: تمت إضافة رمز العرض وهو متاح الآن.</li> <li>Waiting: رمز العرض في انتظار التفعيل.</li> <li>Activated: رمز العرض مفعل الآن.</li> <li>Used: انتهت صلاحية رمز العرض.</li> </ul> |

## تسجيل رمز الاسترداد

- أدخل رمز الاسترداد وانقر على "تسجيل".
  - اقرأ الإشعار واختر "تسجيل" أو "تطبيق" في مربع الحوار المنبثق.
- تسجيل: قم بتسجيل رمز الاسترداد. يمكنك تفعيل واستخدام رمز الاسترداد لاحقًا بعد التسجيل.
  - تطبيق: سجل وقم بتفعيل رمز الاسترداد. ينطبق الخصم الترويجي على الفور.

## Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.  
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.  
Periodic payments are stopped automatically.

Close

Register

Apply

## تفعيل رمز الاسترداد

يمكنك تسجيل رموز استرداد متعددة، لكنك تحتاج إلى تفعيل الرمز الذي تريد استخدامه.

1. انقر على الزر "تفعيل" بجوار الرمز الذي تريد استخدامه.

- إذا لم يكن هناك رمز بالحالة "Activated"، فسيتم تطبيق الرمز الذي تختاره على الفور.
- في حالة وجود رمز مفعّل بالفعل، يتغير الرمز المحدد حديثاً إلى حالة "Waiting". عندما تنتهي صلاحية رمز الاسترداد المنشط حالياً، سيتم تفعيل رمز الاسترداد الجديد في حالة "Waiting" تلقائياً.

ملاحظة

يمكن تفعيل رمز استرداد واحد فقط، ويمكن أن يكون رمز استرداد واحد فقط في حالة "Waiting".

## تفاصيل الدفع

يمكنك عرض اشتراكك وسجل الدفع في تبويب تفاصيل الدفع.

MEDIT Link

Introduce your business by filling in the required information. > Yeseul Lee English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

All Membership Medit Apps

2024-11-21 ~ 2025-02-19

| Payment Date | Product | Payment Type | Duration                | Details         | Amount of Payment | Status            |
|--------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2025-02-19   | 10 TB   | Subscription | 2025-02-19 ~ 2025-02-20 | Monthly payment | 0.00 \$ (USD)     | Payment Completed |


1

스마트 지원

| العنصر      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ الدفع | يعرض تاريخ الدفع.                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنتج      | يعرض الخطة أو التطبيق الذي تم شراؤه.                                                                                                                                                                                                                           |
| نوع الدفع   | <p>يعرض نوع الدفع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الاشتراك</li> <li>دفعة لمرة واحدة</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| المدة       | يعرض فترة الاشتراك.                                                                                                                                                                                                                                            |
| التفاصيل    | يعرض معلومات الدفع المفضلة.                                                                                                                                                                                                                                    |
| مبلغ الدفع  | يعرض مبلغ الاشتراك أو الشراء لمرة واحدة.                                                                                                                                                                                                                       |
| الحالة      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Payment Completed: تمت معالجة الدفع.</li> <li>Payment Failed: لم تتم معالجة الدفع.</li> <li>Payment Incomplete: لم يكتمل الدفع. انقر على "ادفع الآن" للمتابعة.</li> <li>Waiting: الدفع معلق لتجديد الاشتراك.</li> </ul> |

## عرض تفاصيل الفاتورة

يمكنك عرض فواتير وإيصالات الدفع الخاصة بك عن طريق النقر على أيقونة الإيصالات على اليمين.

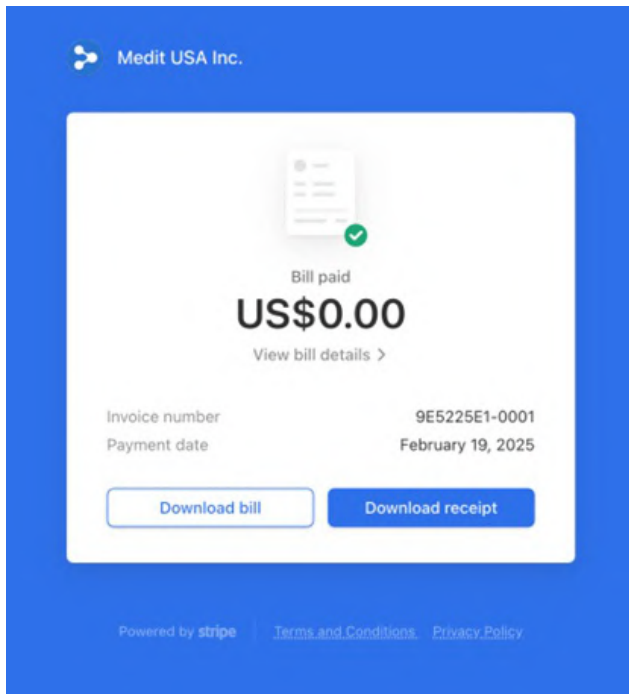

انقر على "عرض تفاصيل الفاتورة" للاطلاع على تفاصيل الدفع.

Medit USA Inc.



Bill paid

US\$0.00

View bill details X

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by stripe

Terms and Conditions

Privacy Policy

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Quantity 1 piece

US\$0.60

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

## My Info

### حسابي

في My Info، يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات التي قدمتها أثناء التسجيل والتحقق من حالة عضويتك.

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

### MEDIT Link

**My Account** My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

**My Info**

#### Account Information



Email Address

seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password

[Change Password](#)

Name

seolah.jeon\_dev\_admin

Language

English ▼

Country/Region

Korea, Republic of ▼

📘 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات المتعلقة بعيادتك أو مختبرك. هذا القسم متاح فقط لحسابات المشرف.

**MEDIT Link**

**My Account** **My Clinic** **My Scanner**

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Clinic Name \*

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.  
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

## الماسح الضوئي الخاص بي

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز المتصل للحساب.

<

| العنصر              | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النوع               | يعرض اسم النموذج.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرقم التسلسلي      | يعرض الرقم التسلسلي للجهاز.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وقت الاستخدام       | يشير إلى مدة استخدام الجهاز.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحالة              | <p>يعرض حالة تسجيل الجهاز:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تشير كلمة "مسجل" إلى أن الماسح الضوئي قد تم توصيله وتسجيله بنجاح.</li> <li>تشير كلمة "غير مسجل" إلى أن الماسح الضوئي لم يعد مسجلاً. إذا كان الماسح الضوئي مسجلاً في مجموعة مختلفة، فسيفقد تسجيله في المجموعة الحالية.</li> </ul> |
| آخر اتصال           | يعرض تاريخ آخر اتصال.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعايرة الأخيرة    | يعرض تاريخ آخر معايرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تاريخ بدء الضمان    | يعرض تاريخ تفعيل الضمان.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تاريخ انتهاء الضمان | يعرض تاريخ انتهاء صلاحية الضمان.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ايام متبقية         | يعرض عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية الضمان.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شراء                | يسمح للمستخدم بشراء الضمان وتمديده.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أيقونة الحذف        | تسمح للمستخدم بإزالة الماسح الضوئي من القائمة.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## قائمت أخرى

### الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

## Notice & Update

**Notice**  
NFT Service Termina...  
2023-04-19

**Notice**  
End of Support Notic...  
2023-04-14

**Update**  
Release Note for Me...  
2023-03-29

**Notice**  
[Medit] We've updat...  
2023-03-29

**Update**  
Release Note for Me...  
2023-03-17

**Update**  
Medit Occlusion Ana...  
2023-03-08

**Notice**  
**NFT Service Termination Notice**  
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
  - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
  - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

## مواقع ذات صلة

يمكنك الحصول على معلومات مختلفة حول استخدام Medit Link. قم بالوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل Medit Academy و Medit Academy YouTube و مركز مساعدة Medit.

Need more help?



**Medit Academy** >



**YouTube** >



**Help Center** >

## تنزيل تطبيق Medit Link

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من مثبت البرنامج من الويب. هذه القائمة مفيدة عندما تفقد المثبت المتوفر في حزمة المنتج، أو إذا كان لديك مثبت قديم.

ملحوظة

يتم تحديث Medit Link تلقائيًا عندما تكون متصل بالإنترنت.



**Windows**

**macOS**

## نظرة عامة

MEDIT Link

3.2.0

sdhc

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Patient

Total Patients: 94

All ▾ All / Contains

View Options ⋮

1

| Patient Name | Patient ID                | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registration Date | Recent Visit Date ↓ |
|--------------|---------------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1. Aria      | 1234567890123456789012... |        |            | 1               | 2023-10-19        | 2023-10-26          |
| 1.Fanta 2    |                           |        |            | 1               | 2023-10-24        | 2023-10-24          |
| 1.FirstA     | 210123                    | F      | 2021-01-23 | 0               | 2023-10-19        |                     |
| 1.Alexa      |                           |        |            | 0               | 2023-10-19        |                     |
| 1.Cola       |                           | F      | 1974-05-25 | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1.Cyder      |                           | M      | 1966-12-31 | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1.Orange     |                           |        |            | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1.Melon      |                           |        |            | 0               | 2023-10-24        |                     |

2

|                 |            |   |            |   |            |            |
|-----------------|------------|---|------------|---|------------|------------|
| 231020D444      |            |   |            | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |
| 231020A111_edit | 231020A111 | F | 1985-02-13 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |
| 2.Second.B      | 941011     | F | 1994-10-11 | 0 | 2023-10-19 |            |

|   |                  |                                                                                                                                  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | شريط العنوان     | راجع تطبيق <a href="#">Medit Link</a> < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.                                                   |
| 2 | القائمة          | راجع تطبيق <a href="#">Medit Link</a> < القائمة للحصول على معلومات مفصلة.                                                        |
| 3 | الأدوات والوظائف | راجع تطبيق <a href="#">Medit Link</a> < عارض الملفات و <a href="#">تطبيق Medit Link</a> < خيارات العرض للحصول على معلومات مفصلة. |
| 4 | قائمة الحالات    | راجع تطبيق <a href="#">Medit Link</a> < الفترة والبحث للحصول على معلومات مفصلة.                                                  |

يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.

| App Box | Trash Box                | Case Talk | Work Box | In Box | Order Box | Case Box | Patient | نوع الحساب |                   |
|---------|--------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|---------|------------|-------------------|
| O       | O                        | O         | X        | X      | O         | O        | O       | المشرف     | حسابات<br>العيادة |
| O       | O<br>*ميزة الاستعادة فقط | O         | X        | X      | O         | O        | O       | العضو      |                   |
| O       | O                        | O         | O        | O      | X         | X        | X       | مشرف       | حسابات<br>المختبر |
| O       | O<br>*ميزة الاستعادة فقط | O         | O        | O      | X         | X        | X       | عضو        |                   |

## شريط العنوان

يوفر شريط العنوان وصولاً سريعاً إلى ميزات مثل معلومات الحساب، الإشعارات، الملاحظات والتحديثات، الإعدادات وحالة الشبكة.



## My Information

تحتوي معلوماتي على معلومات المستخدم الأساسية مثل صورة الملف الشخصي، اسم العيادة أو المختبر، عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

### My Information



Clinic Name

Medit\_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

## الإشعارات

يمكنك رؤية الإشعارات المتعلقة بالشركات، الطلبات وإجراءات العمل.

**Notification**

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

**Delivery**
2020-08-20 오후 5:20

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has dispatched the ordered package.

**Order**
2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

**Order**
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

**Order**
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

**Order**
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

**Order**
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

**Work**
2020-08-14 오후 6:33

Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

**Work**
2020-08-14 오전 10:15

Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

Close


|   |                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | حدد المربع لعرض الرسائل غير المقروءة فقط.                                |
| 2 | انقر على أي إشعار للانتقال على الفور إلى الحالة أو صفحة الويب ذات الصلة. |

## الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

## الإعدادات

يتيح مربع حوار الإعدادات للمستخدمين تكوين البرنامج.

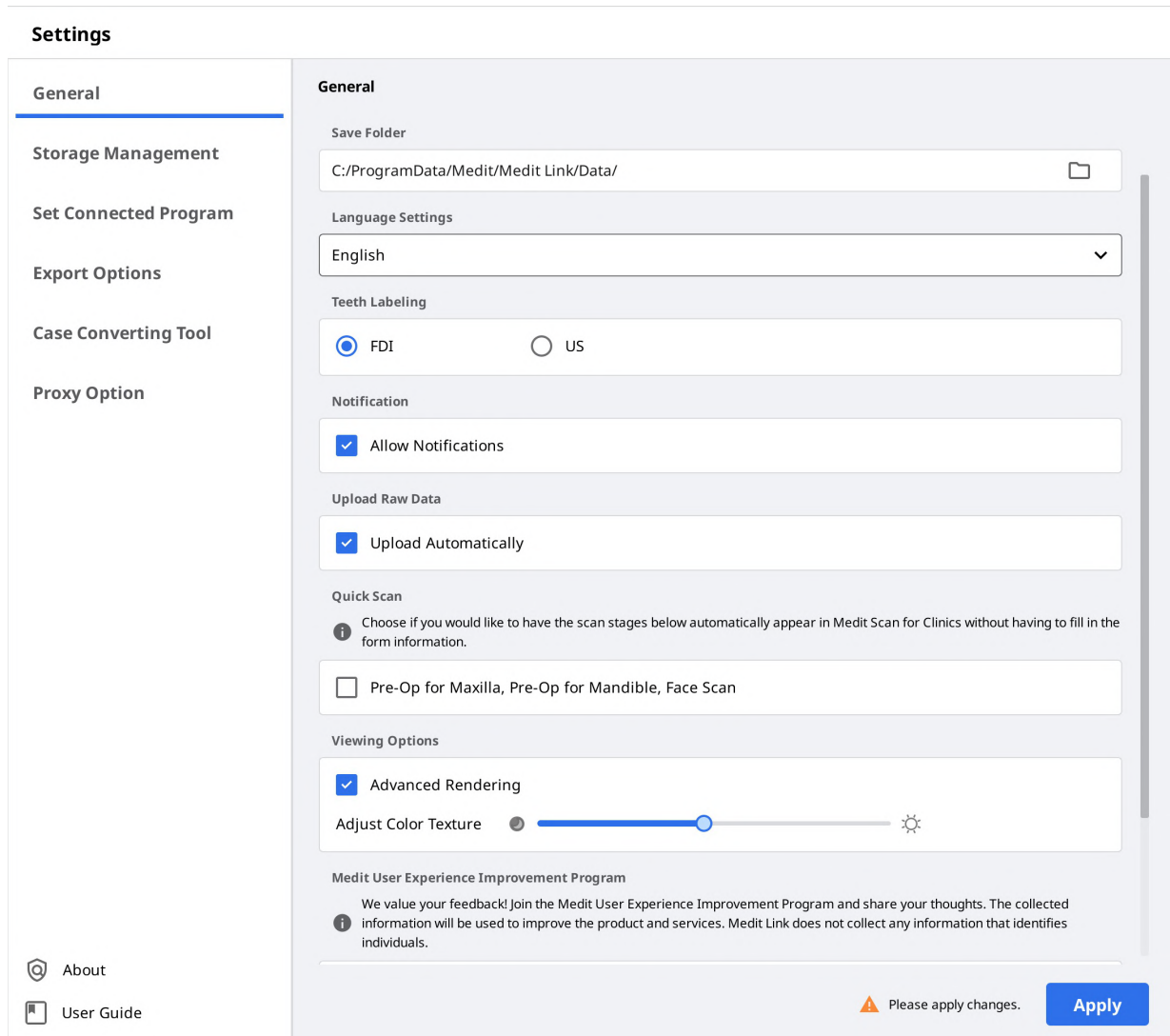

يرجى الرجوع إلى تطبيق Medit Link > الإعدادات للحصول على معلومات مفصلة حول خيارات الإعدادات.

## حالة الشبكة

يمكنك Medit Link من استخدام جميع الميزات بسلاسة عند الاتصال بالشبكة.

لمساعدتك في التحقق من حالة اتصال الشبكة في الوقت الفعلي، يتم عرض أيقونة حالة الشبكة في شريط العنوان.

## Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

إذا لم يكن اتصال الشبكة جيدًا، فقد تواجه القيود التالية:

- سيتم تقييد بعض الوظائف، مثل طلب حالة، إنشاء حالة، المشاركة عبر Case Talk وتزامن مع التخزين السحابي.
- يمكن تقليل الأداء العام للخدمة بسبب تأثير الشبكة.

في هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى وضع عدم الاتصال لأداء المهام الأساسية ثم استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال بالإنترنت بمجرد اتصالك.

### ملحوظة

يشير رمز الشبكة إلى سرعة الاستجابة بين المنطقة الحالية و AWS (Amazon Web Service). لا يمثل ذلك سرعة الشبكة لديك، لذلك قد تظهر أحيانًا الحالة على أنها رديئة أو سيئة، على الرغم من أن سرعة الشبكة لديك سريعة بدرجة كافية. إذا كانت العملية الأخرى تستخدم نفس الشبكة، فقد تظهر السرعة على أنها ضعيفة أو سيئة، وقد يكون الأداء العام لـ Medit Link سيئًا. في هذه الحالة، يرجى عدم مشاركة الشبكة مع العمليات الأخرى. على سبيل المثال، تُعد ميزة "تحميل البيانات الخام" تشكّل حملاً كبيراً على الشبكة. إذا أظهر الرمز حالة سيئة أو رديئة، فانقل إلى الإعدادات > تحميل البيانات الخام وقم بإيقاف تشغيل "التحميل تلقائيًا".

# الإعدادات

## عام

يوفر خيارات لإعداد النظام بشكل عام.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Apply

Close

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حفظ المجلد                         | حدد مجلدًا لتخزين نتائج البيانات التي تم إنشاؤها في Medit Link والبرامج المتصلة.                                                                                                                                                                                                                            |
| مجلد تثبيت التطبيقات               | حدد مسار التثبيت لـ Medit Apps والتطبيقات الشريكة المتوفرة في الـ App Box.                                                                                                                                                                                                                                  |
| إعدادات اللغة                      | حدد لغة البرنامج.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ترقيم الأسنان                      | حدد نظام ترقيم الأسنان بين FDI و US.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إشعارات                            | عند التحديد، ستتلقى إشعارات بتحديثات البرنامج.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تحميل البيانات الخام               | عند التحديد، يتم تحميل البيانات الخام تلقائيًا إلى السحابة. يساعد هذا في خلق نسخة احتياطية من البيانات الأصلية وإجراء مسح سلس عند استخدام Medit Link مع نفس الحساب على جهاز كمبيوتر آخر. تنطبق النسخة الاحتياطية الأصلية للبيانات السحابية فقط على البيانات التي تم الحصول عليها في Medit Scan for Clinics. |
| مسح سريع                           | اختر ما إذا كنت تريد أن تظهر مراحل المسح أدناه تلقائيًا في Medit Scan for Clinics دون الحاجة إلى ملء معلومات النموذج. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ما قبل العملية للفك العلوي</li> <li>• ما قبل العملية للفك السفلي</li> <li>• مسح ضوئي للوجه</li> </ul>                                        |
| المعالجة المتقدمة                  | عند التحديد، يتم عرض النموذج ثلاثي الأبعاد في عرض أكثر حيوية وواقعية.                                                                                                                                                                                                                                       |
| خيارات العرض                       | ضبط سطوع النموذج ثلاثي الأبعاد. <p>* قد تختلف الألوان الناتجة قليلًا عن Medit Link عندما تفتح نفس البيانات باستخدام برامج أخرى.</p>                                                                                                                                                                         |
| برنامج تحسين تجربة Medit مستخدم    | انضم إلى برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• نستخدم المعلومات التي تم جمعها لتحسين منتجاتنا وخدماتنا.</li> <li>• لا نجمع أي معلومات تحدد هوية الأفراد.</li> </ul>                                                                                                     |
| الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول | حدد القائمة الافتراضية التي سيتم عرضها عند بدء تشغيل البرنامج. <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن لحسابات العيادات الاختيار بين Patient و Case Box</li> <li>• يمكن لحسابات المختبرات الاختيار بين In Box و Work Box</li> </ul>                                                                   |

## إدارة التخزين

تحقق من مساحة التخزين المحلية ومساحة تخزين السحابة وقم بإدارتها.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Storage Management

Set Period

1/1/2018-11/13/2023

✓ All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Months Ago

1 Year Ago

Local PC Storage

696.19 GB/792.96 GB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

26.89 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

2.54 GB

Others

It shows space used by other programs.

666.76 GB

Cloud Storage

36.53 GB/10.00 TB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs. Raw data are not counted in cloud storage.

837.95 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

36.53 GB

Total Selected 0.00 KB

Delete

Total Selected 0.00 KB

Delete

Close

71

## الفترة المحددة

قم بتحديد الفترة لحذف البيانات التي تم إنشاؤها خلال الإطار الزمني أدناه.

- الكل: رؤية كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مَرَّت ستة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ عام على إنشائها.

## التخزين المحلي

قم بإدارة مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر.

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البيانات الخام     | قم بإزالة البيانات الخام المحددة من جهاز الكمبيوتر. إذا تم تحميل البيانات الخام بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.                             |
| النتائج & المرفقات | إزالة ملفات النتائج والمرفقات من جهاز الكمبيوتر، مثل الشبكة والصور ومقاطع الفيديو. إذا تم تحميل هذه الملفات بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء. |
| آخرون              | عرض الملفات المستخدمة لتشغيل النظام والبرامج الأخرى. يظهر تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا يمكنك إزالة هذه الملفات من Medit Link.                                   |
| حذف                | إزالة الملفات المحددة من جهاز الكمبيوتر.                                                                                                                             |

## التخزين السحابي

إدارة مساحة التخزين السحابي.

|                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البيانات الخام     | لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الأولية من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة، إلخ. |
| النتائج & المرفقات | تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في التخزين السحابي. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.                                                |
| شراء تخزين         | إذا كنت مشتركاً في الـ 2GB Plan، اشترك في الـ 10TB Plan لتوسيع مساحة التخزين السحابية.                                                                                                                 |
| حذف                | إزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة التخزين.                                                                                                                                         |

## تحديد البرنامج المتصل

إدارة البرامج التي تدعم الدمج في Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100\_Release/Medit\_JScan.exe

Apply

Close

يمكنك توصيل البرامج التالية:

| حساب المختبر                                  | حساب العيادة           |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Medit Scan for Clinics<br>Medit Scan for Labs | Medit Scan for Clinics | برنامج المسح الضوئي |

ملحوظة

لا يتوفر دمج الخدمات التالية لـ Medit Link على Mac.

Medit Scan for Labs •

## خيارات التصدير

اضبط كيفية تصدير الملفات من Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:/YHGam\_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النوع                                                   | حدد برنامج CAD الذي تريد استخدامه للتصميم.<br>سيقوم البرنامج بضبط النتائج بناءً على اختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تصدير الملفات إلى                                       | حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صيغة الشبكة                                             | حدد تنسيق ملف الشبكة النهائي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنسيق الصورة                                            | حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الضغط & الجمع                                           | ضغط الملفات: ضغط جميع النتائج في ملف واحد.<br>دمج شبكة فردية: دمج جميع النتائج للفاك العلوي أو الفاك السفلي في ملف واحد. عند استخدام بعض البرامج التي لا يمكنها استيراد ملفات متعددة والعمل بها، يمكنك دمجها في برنامج واحد للعمل في تلك البرامج.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخيارات عندما يكون نفس المجلد أو الملف موجودًا بالفعل. | اختر الإجراء الافتراضي لحالات وجود نفس اسم المجلد أو الملف في المسار الهدف.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>اسأل دائمًا عند التصدير.</li> <li>تصدير ملف جديد والكتابة فوق الملفات الموجودة. سيتم فقد الملف المخزن حالياً.</li> <li>إنشاء مجلد وتصدير الملفات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قواعد اسم المجلد                                        | حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات.<br>سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه.<br>يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>حساب العيادة<br/>تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب</li> <li>حساب المختبر<br/>تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب</li> </ul> |
| قواعد اسم الملف                                         | تحديد القواعد لاسم الملف الذي تم تصديره.<br>يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>حساب العيادة<br/>تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب</li> <li>حساب المختبر<br/>تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب</li> </ul>                                                                                                             |

## أداة تحويل الحالة

يمكنك نقل الحالات بين الحسابات المختلفة عن طريق تصدير الحالات الموجودة بالحساب أو استيراد الحالات المصدرة من حسابات أخرى.



3. في قسم التصدير، قم بتعيين فترة أو ابحث عن حالات لتصديرها إذا لزم الأمر.

4. اختر الحالات التي تريد تصديرها من القائمة الموجودة في قسم "الملفات المراد تصديرها".

5. قم بتعيين اسم الملف عن طريق تعديل اسم الحالة في حقل اسم الملف.

6. قم بتعيين المجلد الوجهة لتصدير الحالات المختارة.

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم تصدير الملف إليه.

## Question



Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. يتم حفظ الحالات المصدرة بتنسيق ملف .meditex.

## إستيراد حالة

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

**Patient**

Total Patients: 3500

All / Contains

| # | Patient Name         | Patient ID | Gender | Number of Cases | Registration Date | Date of Birth |
|---|----------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|
|   | #29024 Rula Al-Salti |            |        | 0               | 2020-03-16        |               |
|   | #30167               |            |        | 0               | 2020-04-17        | 0000-00-00    |
|   | #34534 Dr. William   |            |        | 0               | 2020-07-15        |               |

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

**Settings**

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

**Export**

All / Contains

Files to Export 0 / 767

| Case Name                                                              | Patient Name            | Last Modified Date |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Export_1                                      | 1                       | 2025-02-07 PM 3:34 |
| <input type="checkbox"/> Export_1                                      | 1                       | 2025-02-07 PM 3:34 |
| <input type="checkbox"/> 48                                            | 1                       | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone | Multi Occlusion CASE_1  | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> PM Model's Case                               | PM Model                | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> exocad Result                                 | 3462_Visualization TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Mandible Movement - Clone - Clone             | Mandible Movement       | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Visualization Mesh TEST's Case - H II - H II  | Visualization Mesh TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Visualization Mesh TEST's Case - H II         | Visualization Mesh TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |

File Name

CaseBox\_2025-2-21\_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

**Import**

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

| File Name  | Import Time        |
|------------|--------------------|
| 38.meditex | 2025-02-20 PM 3:05 |
| 37.meditex | 2025-02-20 PM 3:05 |

Close

3. في قسم الاستيراد، انقر على رمز المجلد لتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن ملف .meditex الذي تريد استيراده.

**Import**

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox\_2023-11-13\_152111.meditex

Import

4. انقر على الزر "استيراد" وتحقق من الملفات المراد استيرادها في القائمة أدناه.

## Import

A new case is created for every imported case.

It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox\_2023-11-13\_152111.meditex



Import

File List

| File Name                         | Import Time        |
|-----------------------------------|--------------------|
| CaseBox_2023-10-23_161849.meditex | 11/13/2023 4:08 PM |
| CaseBox_2023-11-13_152111.meditex | 11/13/2023 4:08 PM |

5. ستظهر الحالة المستوردة أيضًا في Case Box (حساب العيادة) أو Work Box (حساب المختبر).

## خيارات الوكيل

في الأماكن ذات الشبكة المحدودة، يمكنك تغيير إعدادات الشبكة.

### Settings

- General
- Storage Management
- Set Connected Program
- Export Options
- Case Converting Tool
- Proxy Option**

**Proxy Server** ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

## حول

إظهار معلومات مفصلة حول Medit Link.

## About

# MEDIT Link

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Product Name | Medit Link        |
| Version      | 3.3.0             |
| Build Number | 123               |
| Server       | Operation Korea   |
| UDI DI       | (01)8800026700449 |
| UDI PI       | (10)3.3.0         |

### Medit Corp.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 품목명              | 1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어          |
| 모델명              | ML-STD001                    |
| 품목별제조신고번호        | 제신 25-112호                   |
| 사용방법 및 사용시 주의 사항 | 사용설명서 참조                     |
| 부작용 보고 관련 문의처    | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183    |
| 제조자의 상호:         | (주)메디트                       |
| 제조자의 주소:         | 서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층 |
| 제조자의 연락처:        | +82-2-2193-9600              |

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close


## دليل المستخدم

احصل على دليل المستخدم لـ Medit Link.

يتطلب فتح دليل المستخدم اتصالاً بالإنترنت.

## Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجدول - في كل من تطبيق وموقع Medit Link.

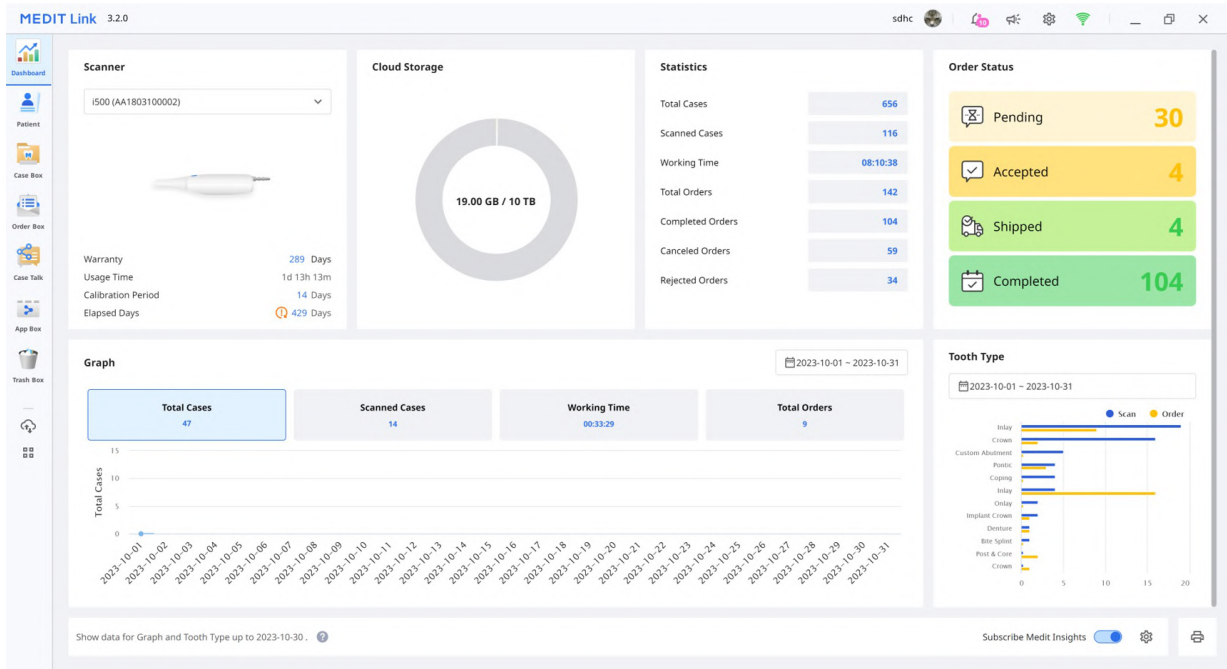

## ملحوظة

يرجى الرجوع إلى [موقع Medit Link > Dashboard](#) لمزيد من المعلومات حول ال Dashboard و Medit Insights.

## Patient

يمكنك إضافة المرضى، تعديلهم، حذفهم أو دمجهم في قائمة Patient.

**Patient**

Total Patients: 422

Filters: All | All / Contains

| Patient Name      | Patient ID | Date of Birth | Gender | Number of Cases | Last Scanned Date  | Last Modified Date  | Registration Date | Actions |
|-------------------|------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|
| agdsfgsdg         |            |               |        | 1               |                    | 2020-09-24 PM 5:03  |                   | Scan    |
| addTEST           |            |               |        | 1               |                    | 2021-06-17 AM 11:54 |                   | Scan    |
| aaaa              |            |               |        | 1               |                    | 2023-04-22 PM 4:25  |                   | Scan    |
| aaa               |            |               |        | 1               |                    | 2023-04-22 PM 5:08  |                   | Scan    |
| aa                |            |               |        | 1               |                    | 2023-03-06 PM 6:32  |                   | Scan    |
| a                 |            |               |        | 1               |                    | 2023-05-31 PM 2:07  |                   | Scan    |
| Arch test         |            |               |        | 1               |                    | 2020-08-17 PM 12:26 |                   | Scan    |
| Arch Order Test   |            |               |        | 2               |                    | 2020-09-01 PM 2:17  |                   | Scan    |
| Abutment Scan     |            |               |        | 1               | 2022-04-04 PM 2:23 | 2022-04-04 PM 2:15  |                   | Scan    |
| Abutment Cut test |            |               |        | 1               | 2019-12-05 PM 6:03 | 2019-12-05 PM 5:59  |                   | Scan    |
| AAA               |            |               |        | 1               |                    | 2023-08-16 PM 4:06  |                   | Scan    |

## إضافة مريض جديد

1. انقر على "مريض جديد".

### New Patient

Patient Name\*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. املأ المعلومات المطلوبة في مربع حوار "المريض الجديد"، ثم انقر على "حفظ".

## حذف مريض

ملحوظة

يمكنك حذف مريض فقط في حالة عدم وجود حالات للمريض.

1. حدد المريض الذي تريد حذفه من القائمة.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient + New Case

View Options

Patient

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2

All / Contains


| Patient Name                                    | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registration Date | Recent Visit Date |
|-------------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Tomita, Cheri          |            |        |            | 1               | 2023-09-18        | 2023-09-18        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Temporaries |            |        |            | 0               | 2023-10-04        |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> T.Q.P       | 카미타        | M      | 1987-11-04 | 0               | 2023-09-07        |                   |

2. انقر على "حذف".


## دمج مرضى

يمكنك دمج جميع حالات المرضى المتعددين في مريض واحد.

1. حدد المرضى الذين تريد دمجهم من القائمة.

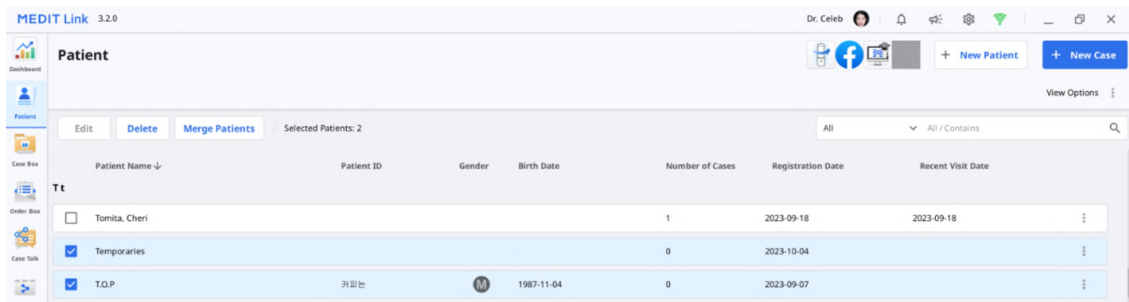


2. انقر على "دمج المرضى".
3. حدد المريض الهدف الذي ترغب في دمج جميع الحالات فيه.
4. يتم دمج جميع الحالات في المريض الهدف ويتم الاحتفاظ بمعلوماته الخاصة.

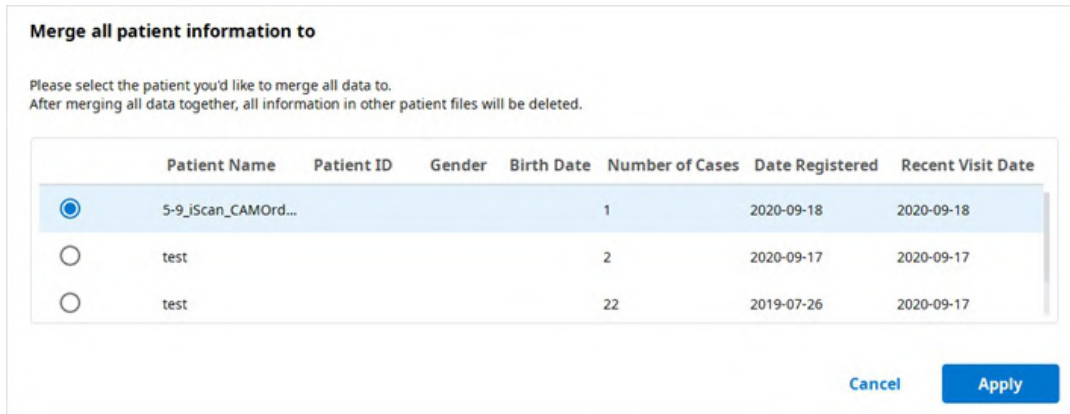

5. انقر على "تطبيق" لمباشرة الدمج.

## Case Box/Work Box

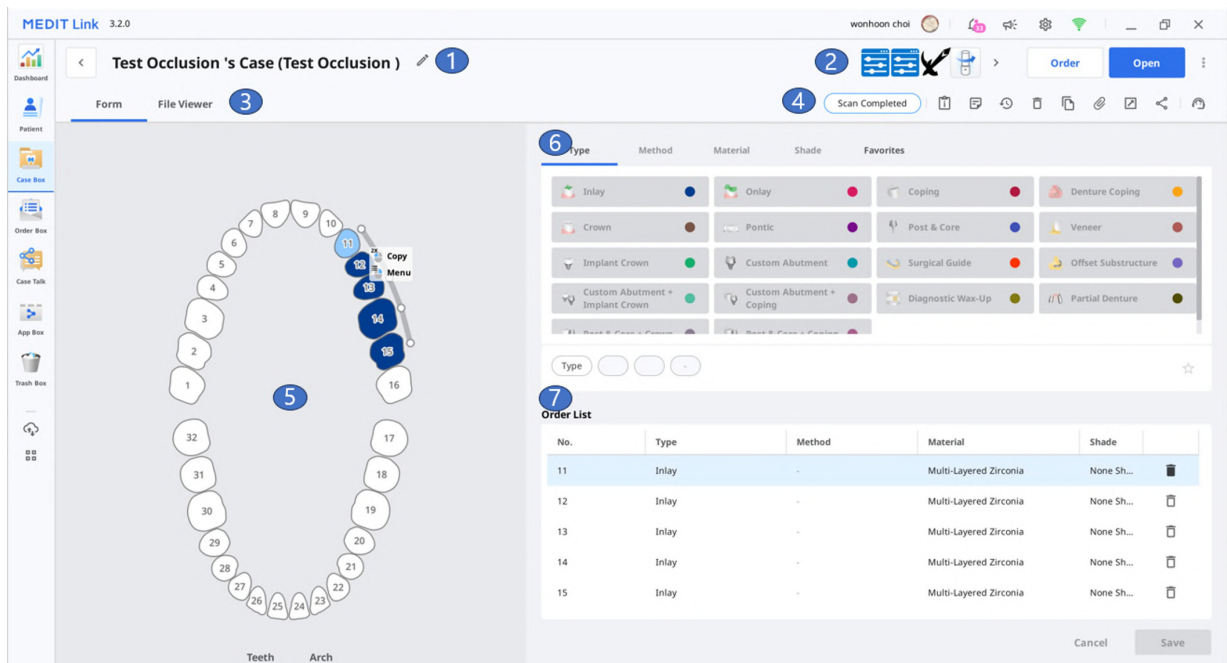

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | إظهار اسم الحالة واسم المريض.                                                           |
| 2 | توفير الميزات الرئيسية المتاحة: زر المسح الضوئي أو الفتح، زر الطلب، وأيقونات التطبيقات. |
| 3 | إظهار علامات التبويب المتاحة: النموذج، عرض الملفات                                      |
| 4 | عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات.                                                      |
| 5 | إظهار واجهة مستخدم تسجيل النموذج لبرنامج المسح المحدد.                                  |
| 6 | توفير معلومات النوع/الطريقة / المادة/اللون للمستخدمين للاختيار لرقم السن المحدد.        |
| 7 | عرض النوع/الطريقة/المادة/معلومات اللون المطبقة على الأسنان المختارة.                    |

## علامات التبويب في Case Box/Work Box

| عارض الملفات                                                                                                                                                      | النموذج                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض ملفات النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة برامج المسح و CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة. | توفر علامة تبويب النموذج واجهة مستخدم لإدخال المعلومات الأساسية للمسح الضوئي، مثل النوع والطريقة والمواد الخاصة بأرقام الأسنان وخيارات المسح. يتم تمرير المعلومات التي تدخلها إلى برنامج المسح الضوئي المتصل واستخدامها كمعلومات طلب عند تقديم طلب مع شريكك. |

## الوظائف في Case Box/Work Box

يتم توفير الوظائف التالية في Case Box/ Work Box.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| إظهار حالة الحالة.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حالة الحالة                      |  |
| توفير اختصارًا للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box)؛<br>(In Box ↔ Work Box).                                                                                                                                                                                                                       | انتقل إلى<br>Order Box/In<br>Box |  |
| راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.                                                                                                                                                                                                                                                               | معلومات الحالة                   |  |
| أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.                                                                                                                                                                                                 | مذكرة & علامات                   |  |
| يوفر معلومات مفصلة حول تاريخ الحالة.                                                                                                                                                                                                                                                                         | تاريخ الحالة                     |  |
| <div><div><div>History</div><div><div>Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM</div><div>Scanning Date4/12/2021 2:06 PM</div><div>Creation Date3/22/2022 1:17 PM</div></div><div><div>Case Size435MB</div></div><div>Close</div></div></div>                                                                      |                                  |  |
| حذف الحالة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حذف                              |  |
| لا يمكنك حذف الحالات المطلوبة أو الحالات التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال.<br>إنشاء نسخة من الحالة الحالية في Case Box. يتم نسخ جميع البيانات إلى الحالة المستنسخة.<br>تساعد هذه الميزة على تكرار معلومات العلاج لنفس المريض أو تقديم طلب إضافي بنفس المعلومات أو الملفات.                                 | استنساخ                          |  |
| إرفاق ملفات بتنسيقات مختلفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إرفاق                            |  |
| تصدير ملفات المسح الضوئي أو نتائج CAD إلى جهاز الكمبيوتر المحلي. يمكنك اختيار تنسيق الملف المفضل لديك عند تصدير الملفات.<br>يمكن استخدام الملفات المصدرة في برامج CAD و CAM لمزيد من العمل.                                                                                                                  | تصدير                            |  |
| إنشاء رابط للمشاركة.<br>يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشارك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari دون تثبيت برامج إضافية.<br>يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية الرابط لتأمين المعلومات الخاصة. | مشاركة                           |  |
| انتقل إلى صفحة مركز مساعدة Medit لتقديم طلب الدعم.                                                                                                                                                                                                                                                           | إرسال طلب الدعم                  |  |

## Order Box/In Box

MEDIT Link 3.2.0

Order Occlusion Test's Case (Occlusion Test) 1

2 Cancel Order

3

4 Pending

5

6

| Type     | Method | Material               | Shade      |
|----------|--------|------------------------|------------|
| 11 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 12 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 13 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 14 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |

|   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | عرض اسم الحالة واسم المريض.                                                                                                            |
| 2 | توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).                                                                        |
| 3 | إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات.                                                                                     |
| 4 | عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.          |
| 5 | عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات. |
| 6 | عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.                                                                                              |

## علامات التبويب في Order Box/In Box

| الطلب                                                                                                                                           | عارض الملفات                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحقق من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطلب، مثل رقم الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات. | تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة. |

## Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص محددين، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو الأعضاء المسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال Case Talk في تطبيق Medit Link وموقع Medit Link.

### ملحوظة

تتطلب خدمة Case Talk اتصالاً بالإنترنت.

MEDIT Link 3.3.0

admin

Case Talk

2018-01-01 ~ 2024-04-23

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

| Case Talk Name                                             | Patient Name   | Form Information           | Scanned Date | Shared Date ↓    | Expiration Date |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 2022_04_06_MEDIT NFT                                       | hk****         | 27 36                      | -            | 2022-04-06 13:40 | unlimited       |
| seolah.jeon                                                | hk****         | 11, 12, 13, 21, 22, 23     | -            | 2022-04-01 11:48 | unlimited       |
| 2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02 | 2.***** TE** 2 | 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36 | -            | 2022-03-31 18:46 | unlimited       |

1

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

## App Box

يوفر App Box العديد من البرامج الإضافية التي تكمل سير عمل المسح الضوئي الأساسي وتعزز الإنتاجية. يمكنك تنزيل التطبيقات المتوفرة وتثبيتها لإنشاء تركيبات، تحليل بيانات المسح، لنيل مساعدة أثناء الاستشارة، أو لتبسيط عملية عملك.

MEDIT Link 3.3.0

Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook! Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Join Now

Explore Medit Resources News, tips, and expert insights on Digital Dentistry

Visit Now

Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

Medit DCM Converter Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format

Update

Medit Smile Design Simulation of teeth movement for orthodontic cases

Installed

Medit Ortho Simulation Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...

Install

Action Gate (ヨシダ・Yoshid... Comprehensive dental PMS

Install

Management

DentWeb(덴트웹) Integration Comprehensive dental PMS

Install

EasyRx Integration Universal orthodontic LMS

Install

Open Dental Integration Quality software for dental offices

Install

iie systems connector PRM specialized for orthodontics

Install

OneClick Integration App Osstem's easy-to-use PMS

Install

i-Pro Integration Comprehensive dental PMS

LOGOSw Integration Add a link between LOGOSw and Medit Link

DentalCAD Integration Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.

Action Gate (ヨシダ・Yoshid... Comprehensive dental PMS

Andcom Integration Convenient dental PMS

## الكل


يعرض التوب "الكل" قائمة بجميع التطبيقات المقدمة بما في ذلك التطبيقات الأصلية التي طورتها Medit (Medit Apps) والتطبيقات الشريكة، وهي تطبيقات تكامل مع شركاء Medit من مختلف قطاعات طب الأسنان الرقمي، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، برامج CAD/CAM، إلخ.

## Medit Apps

يعرض التوب "Medit Apps" فقط قائمة التطبيقات الأصلية التي تم تطويرها بواسطة Medit.

## تم تنزيلها

يعرض التبويب "تم تنزيلها" قائمة بالتطبيقات المثبتة حاليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتطبيقات التي لها سجل تنزيل على حساب المستخدم.

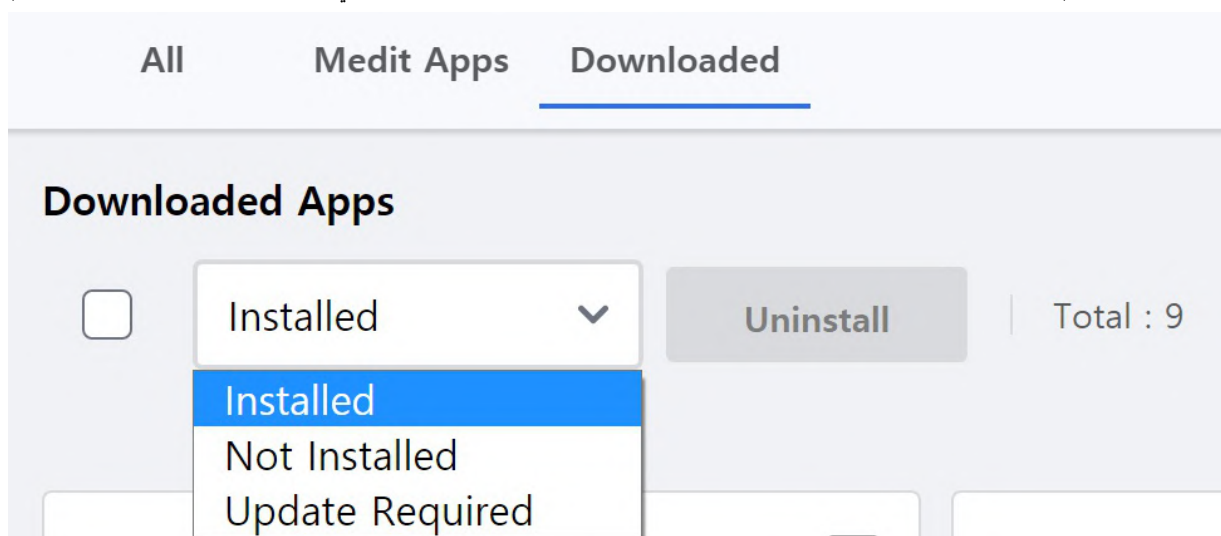

- **مثبتة** : يعرض هذا الخيار فقط التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر الذي قام المستخدم بتسجيل الدخول إليه حاليًا.
- **غير مثبتة** : يتيح لك هذا الخيار رؤية التطبيقات التي قمت بتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الأخرى حتى تتمكن من تثبيتها بسرعة.
- **التحديث مطلوب** : يعرض هذا الخيار فقط التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر الحالي والتي تحتاج إلى تحديث.

## Trash Box

يخزن Trash Box مؤقتًا الحالات المحذوفة. يمكن استعادة أي حالة في Trash Box أو حذفها نهائيًا.

⚠ يرجى الحذر

سيتم حذف البيانات المحذوفة في Trash Box نهائيًا من جهاز الكمبيوتر والخادم ولا يمكن استعادتها.

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

### Trash Box

Restore Selected Cases: 0

| Status         | Case Name                                          | Patient Name                | Lab Name | Deletion Date ↓     | Deleted By   | Size      |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|
| Scan Completed | Jira_외출판트 46, 47's Case - Clone - Clone            | 외출판트 46, 47                 |          | 2023-04-26 오전 9:12  | wonhoon choi | 66,654 KB |
| Form Only      | G11598492304180810429                              | test test                   |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | G11598492304180806313                              | test test                   |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | G11598492304180811349                              | tes test                    |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | G11598492304180754083                              | Glidewell_fastdesign        |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | G11598492304180733332                              | Glidewell_fastdesign        |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | G11598492304180648146                              | test test                   |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Case Completed | Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone         | Multi Occlusion Normal Case |          | 2023-04-18 오전 10:50 | wonhoon choi | 23,652 KB |
| CAD            | Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone | Multi Occlusion Normal Case |          | 2023-04-18 오전 10:50 | wonhoon choi | 23,652 KB |
| Form Only      | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test              |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | Test Occlusion 's Case                             | Test Occlusion              |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test              |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| Form Only      | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test              |          | 2023-04-17 오후 6:26  | wonhoon choi | 0 KB      |

## مدير مزمنة الحالات

يساعدك مدير مزامنة الحالات على تحميل الحالات وتنزيلها بكفاءة. يمكنك تحميل عدة حالات على السحابة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك. لتحديد الحالات التي تتطلب المزامنة، ما عليك سوى البحث عنها أو تطبيق فلاتر التاريخ.

Case Synchronization Manager

UploadDownload

All

Case NameCase Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No DateData TypeAll

| <input type="checkbox"/> | Case Name                         | Patient Name                    | Scanned Date       | Size      | Status          |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | BLATRIX Charline's Case           | BLATRIX Charline                | 2025-01-06 PM 6:28 | 729.30 MB | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | BLATRIX Charline's Case           | BLATRIX Charline                | 2025-01-06 PM 6:28 | 729.30 MB | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | BLATRIX Charline's Case - 복제      | BLATRIX Charline                | 2025-01-06 PM 6:28 | 733.35 MB | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | BLATRIX Charline's Case - Clone   | BLATRIX Charline                | 2025-01-06 PM 6:28 | 734.01 MB | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | test의 케이스                         | Patient TEST                    | 2023-04-26 PM 7:58 | 1.25 GB   | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | i700 HD's Case                    | i700 HD                         | 2023-04-24 PM 5:23 | 911.24 MB | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | Mandibular Movement               | MEDIT                           | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.88 GB   | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | Mandibular Movement Case          | MEDIT                           | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.75 GB   | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | Mandibular Movement Case - Clo... | MEDIT                           | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.75 GB   | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | 서라_Mandibular Movement_TEST       | Mandibular Movement_export_test | 2023-04-10 PM 3:39 | 34.73 MB  | Upload Required |
| <input type="checkbox"/> | 서라_Mandibular Movement_TEST...    | Mandibular Movement_export_test | 2023-04-10 PM 3:39 | 731.43 MB | Upload Required |

Close

التحميل

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قم بتحميل الحالات المختارة.                |  Upload |
| قم بإلغاء التحميل للحالات المختارة.        |  Cancel |
| حاول تحميل الحالات مجددًا إذا فشل التحميل. |  Retry  |

التنزيل


|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قم بتنزيل الحالات المختارة.                |  Download |
| قم بإلغاء التنزيل للحالات المختارة.        |  Cancel   |
| حاول تنزيل الحالات مجددًا إذا فشل التنزيل. |  Retry    |

مواقع ذات صلة

يمكنك الانتقال مباشرة إلى القوائم المتوفرة فقط على موقع Medit Link، مثل My Info، Partners و Membership. يرجى الرجوع إلى Medit Link < موقع Membership، Partners > Medit Link، و My Info للحصول على أوصاف مفصلة لقوائم موقع Medit Link.

يمكنك الوصول إلى متجر Medit عبر الإنترنت، Medit Shop، حيث يمكنك شراء ضمانات ممتدة للماسحات الضوئية و سلع Medit الأخرى، مثل حقائب الظهر للماسحات الضوئية.

يمكنك أيضًا الحصول على معلومات متنوعة حول استخدام Medit Link. يمكنك الوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل مركز مساعدة Medit وقناة Medit Academy على YouTube ومنصة Medit Academy للتعليم عبر الإنترنت.

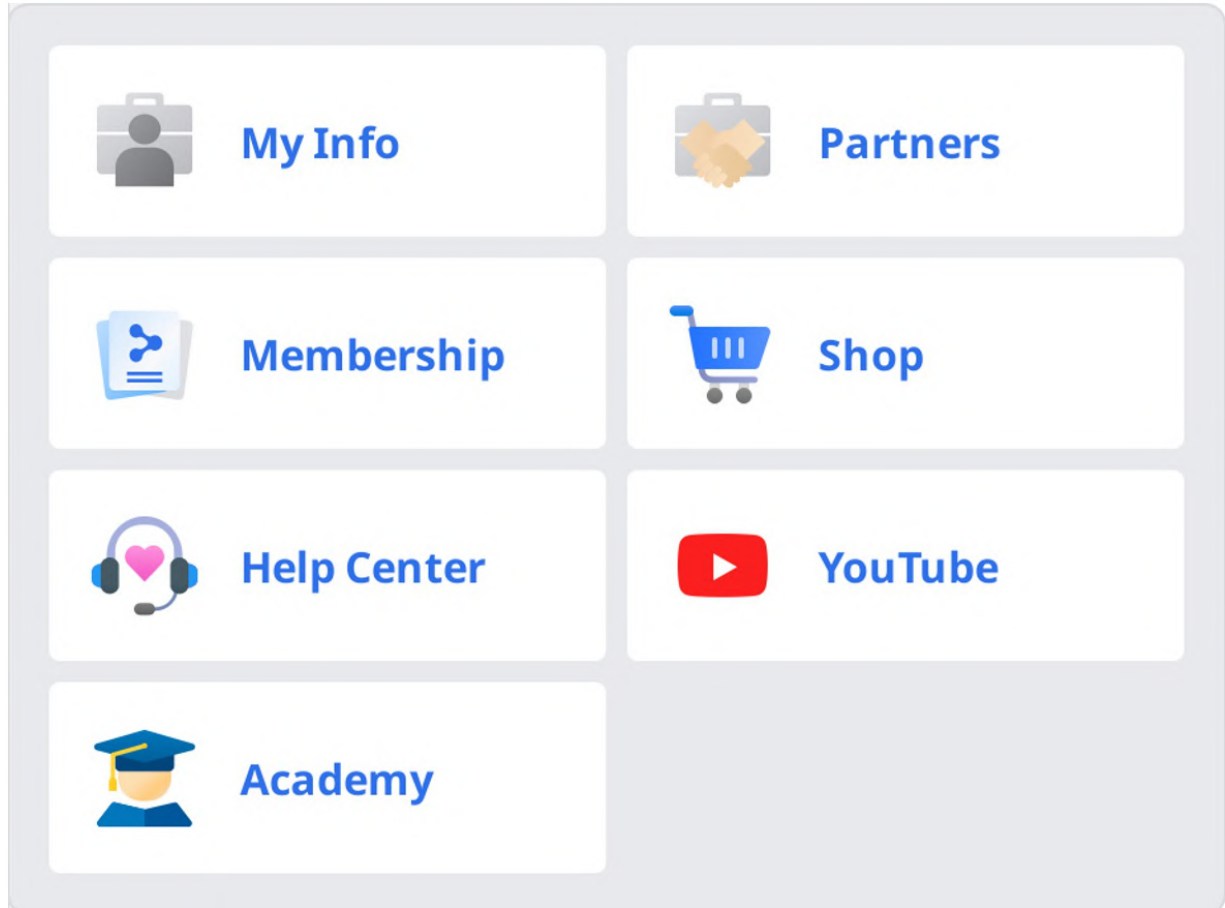

## عارض الملفات

يقوم عارض الملفات بتجميع وعرض البيانات المختلفة، بما في ذلك البيانات المكتسبة من البرامج المرتبطة بـ Medit Link والبيانات المرفقة من قبل المستخدمين.

يوفر وظائف الإدارة الأساسية مثل إظهار/إخفاء البيانات وضبط العتامة وحذف البيانات.

يدعم معاينات الملفات بالتنسيقات التالية:

- البيانات ثلاثية الأبعاد: STL، OBJ، PLY
- الصور ثنائية الأبعاد: PNG، JPG، JPEG، BMP، GIF، TIF، TIFF
- ملفات الفيديو: MKV، MP4، AVI، WMV

## شجرة البيانات

يمكنك جمع وعرض كافة البيانات الخاصة بالحالة في شجرة البيانات. يمكنك أيضًا إظهار/إخفاء البيانات وضبط الشفافية وحذف البيانات من شجرة البيانات.

|                                                                                                                                        |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| يمكنك إظهار أو إخفاء البيانات.                                                                                                         | إظهار أو إخفاء |  |
| يظهر شريط التمرير عند النقر على إحدى البيانات الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك ضبط عتامة البيانات المعروضة عن طريق تحريك شريط التمرير. | العتامة        |  |
| يؤدي النقر على رمز المزيد إلى إظهار الميزات الإضافية المتاحة.                                                                          | المزيد         |  |



ملاحظة

يمكنك إعادة تسمية البيانات عند الاتصال بالإنترنت.

## أدوات التحكم في النموذج

### ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد

|   |                     |                                                                |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| + | تحريك كامل          | قم بتحريك النموذج.                                             |
| ↺ | تدوير               | قم بتدوير النموذج.                                             |
| 🔍 | تكبير/تصغير         | تكبير وتصغير النموذج.                                          |
| 🔍 | التكبير مع الملاءمة | وضع النموذج في وسط الشاشة.                                     |
|   | لامع                | شاهد البيانات بالألوان مع لمسة نهائية لامعة ( عرض PBR ).       |
|   | غير لامع            | شاهد البيانات بالألوان مع لمسة نهائية غير لامعة ( عرض Phong ). |
|   | وضع عرض البيانات    | شاهد البيانات بلون واحد.                                       |
|   | أحادي اللون         |                                                                |
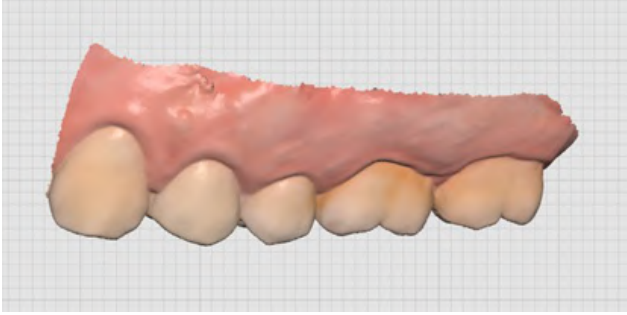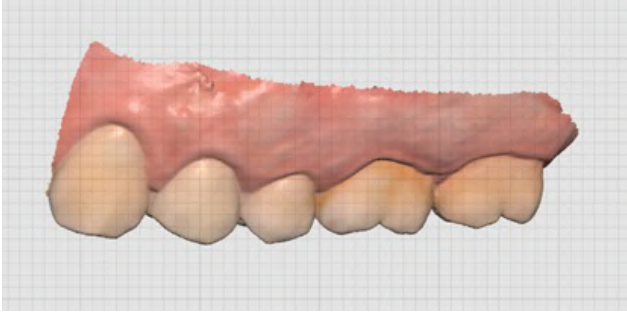
|                                                                                    |                           |                        |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|
|   | إظهار الشبكة في الخلفية.  | الشبكة<br>مفعلة        |                           |  |
|                                                                                    | إخفاء الشبكة في الخلفية.  | الشبكة<br>غير<br>مفعلة | إعدادات<br>الشبكة<br>(mm) |  |
|  | تراكب الشبكة فوق النموذج. | تراكب<br>مفعلة         |                           |  |

## التحكم بالصور ثنائية الأبعاد


|                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التنقل بين الصور.                                                                                                                         | الصورة التالية/السابقة | < >                                                                                                                                                                         |
| تعديل الصورة.                                                                                                                             | تعديل                  |                                                                                        |
| يمكنك فصل نافذة الصورة وضبطها على الموضع المطلوب. يمكنك تغيير حجم النافذة. عند إعادة النافذة إلى موقعها الأصلي، تعود إلى حجمها الافتراضي. | قرص/لصق النافذة        |   |

## أدوات الوظائف

### التقاط الصور والمذكرة


النقط الشاشة الحالية كصورة ثنائية الأبعاد أو ارسم عليها أو أضف ملاحظات.


يمكنك حفظها كملف مع ملاحظاتك وإرسالها كمرجع.

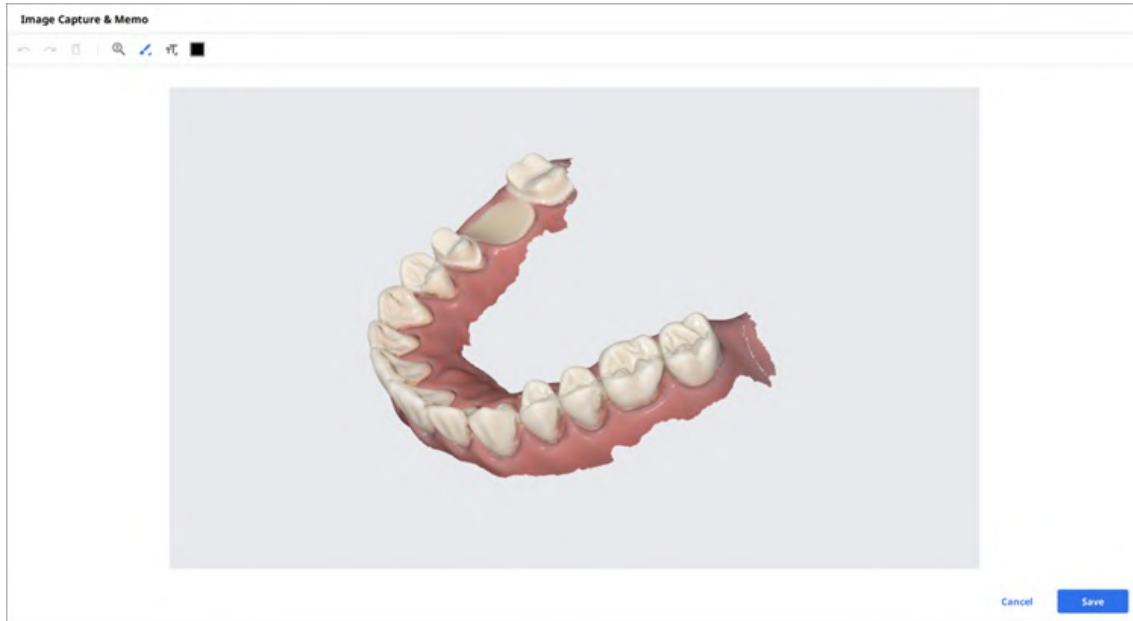

## Ortho Capture


التقط الصور في اتجاه العرض الحالي وأعلى/ أدنى/يسار/يمين من اتجاه العرض الحالي.

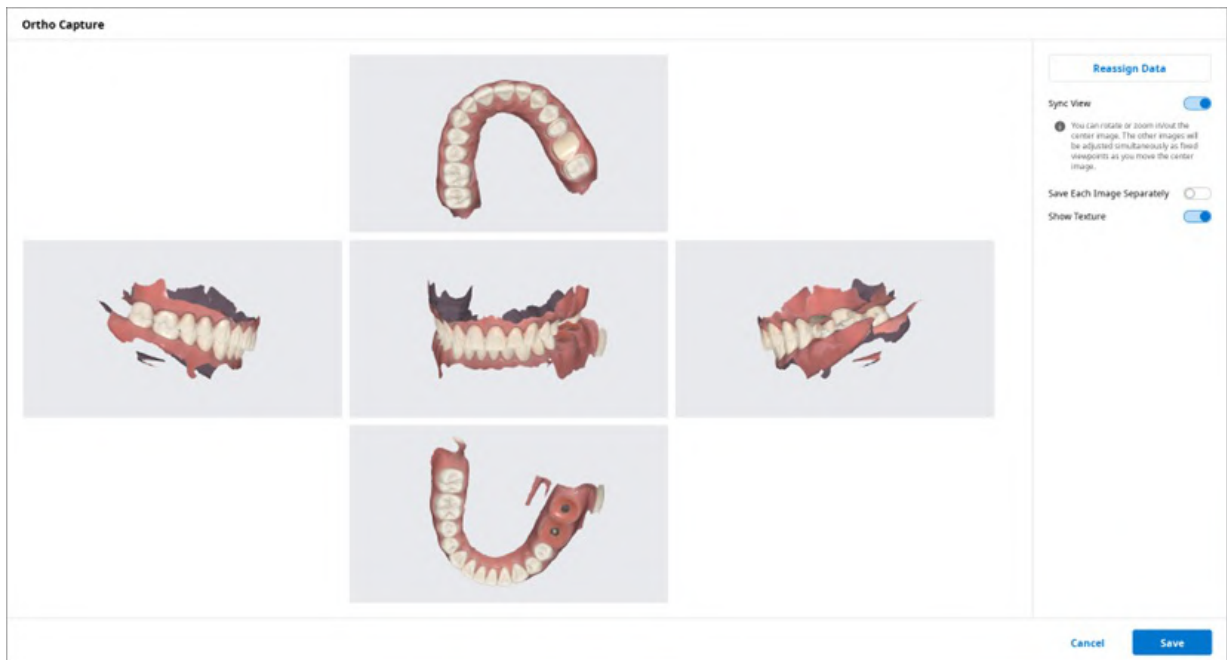
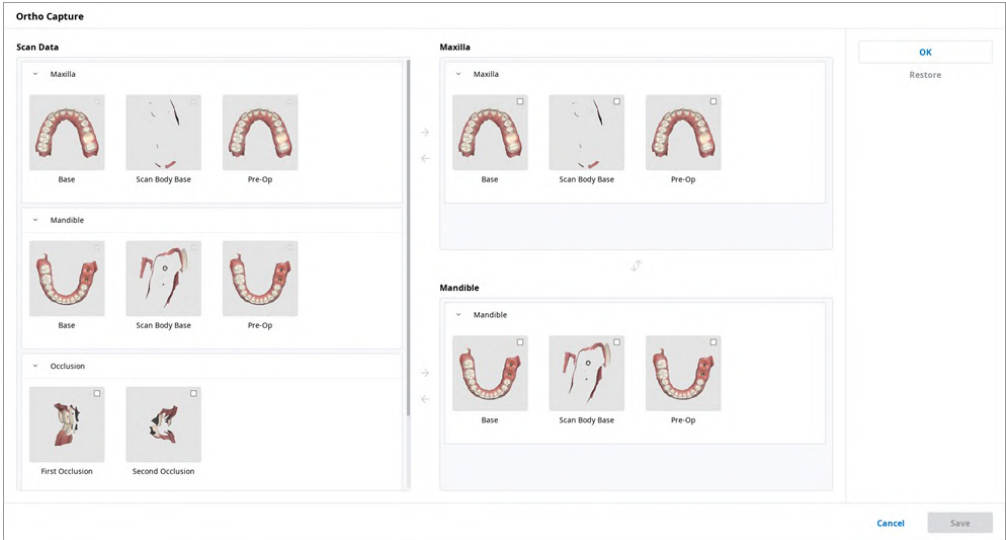
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>عند التشغيل، يمكنك تدوير أو تكبير/تصغير الصورة المركزية. سيتم ضبط الصور الأخرى في نفس الوقت كنقاط رؤية ثابتة أثناء تحريك الصورة المركزية.</p> <p>عند إيقاف التشغيل، يمكنك تحريك جميع الصور أو تدويرها أو تكبيرها/تصغيرها بشكل فردي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>عرض المزامنة</p>           |
| <p>احفظ كل صورة بدقة عالية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>حفظ كل صورة بشكل منفصل</p> |
| <p>قم بتفعيل/إيقاف تفعيل نسيج النموذج.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>إظهار النسيج</p>           |
| <p>قم بتغيير بيانات الفك العلوي/الفك السفلي باستخدام ميزة إعادة تعيين البيانات. يمكنك استخدام البيانات المغيرة لإنشاء واستخدام الصور الناتجة من Ortho Capture.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسح البيانات: يتم عرض بيانات المسح الضوئي للحالة.</li> <li>• الفك العلوي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك العلوي.</li> <li>• الفك السفلي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك السفلي.</li> </ul> | <p>إعادة تعيين البيانات</p>   |


## ملء الثقوب

ملء الثقوب في بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد.

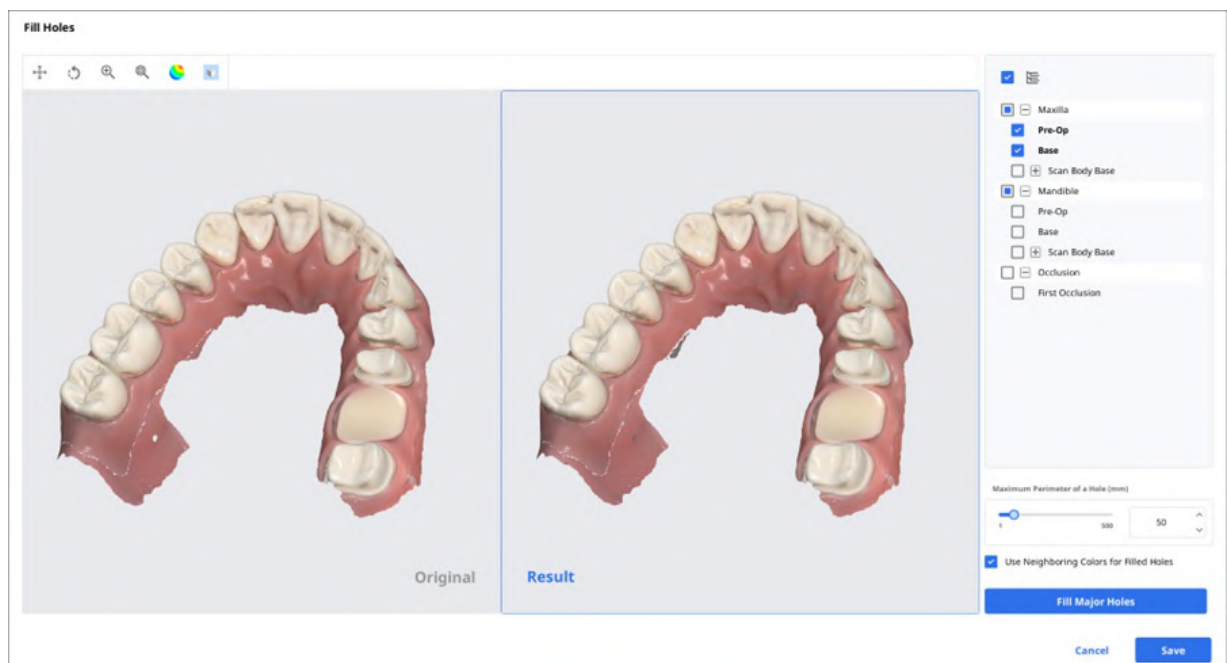

## القص


يوفر القص أدوات متنوعة لتعديل البيانات.

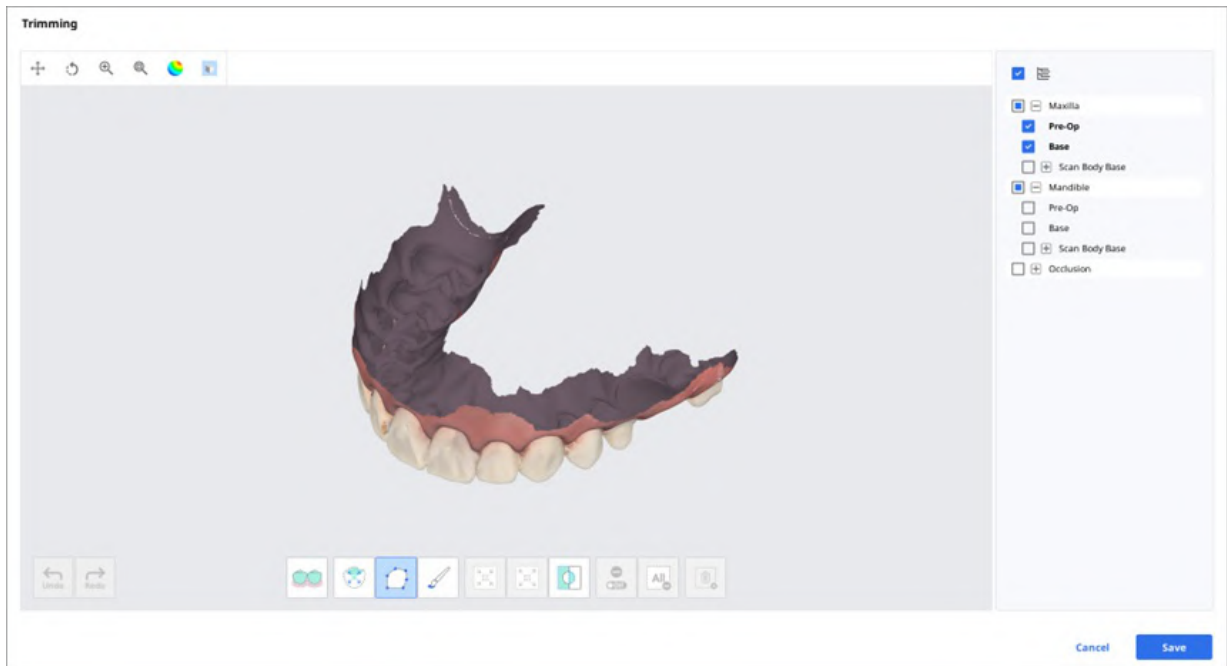

يمكن تعديل بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد المحددة باستخدام أدوات مختلفة موجودة في الجزء السفلي من النافذة.

|                                                                                                                                                     |                           |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| لتحديد كل أسنان الفك تلقائيًا، تأرّك أجزاء اللثة.                                                                                                   |                           |  |                        |
| <p><b>ملاحظة</b></p> <p>هذه الوظيفة متاحة فقط لبيانات المسح التي تم الحصول عليها باستخدام Medit Scan for Clinics مع تشغيل خيار "إستخدام الGPU".</p> | التحديد الذكي للأسنان     |  |                        |
| تحديد مساحة السن الواحد تلقائيًا بنقرة واحدة. يمكنك النقر أو السحب على السن.                                                                        | التحديد الذكي للسن الواحد |  | الاختيار               |
| حدد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة.                                                                                           | التحديد متعدد الخطوط      |  |                        |
| حدد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. سيتم تحديد الوجه الأمامي فقط. تأتي الفرشاة بثلاثة أحجام مختلفة.                                 | تحديد بالفرشاة            |  |                        |
| قم بتقليل المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.                                                                                             | تقليل المنطقة المحددة     |  | تعديل المنطقة المختارة |
| قم بتوسيع المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.                                                                                             | توسيع المنطقة المحددة     |  |                        |
| عكس التحديد.                                                                                                                                        | عكس المنطقة المحددة       |  |                        |
| عند التشغيل، قم بإلغاء تحديد المنطقة باستخدام أدوات مختلفة.                                                                                         | التحديد/إلغاء التحديد     |  | إلغاء التحديد          |
| إلغاء كافة المناطق المحددة.                                                                                                                         | إلغاء كل ما تم تحديده     |  |                        |
| حذف البيانات من المنطقة المحددة.                                                                                                                    | حذف المنطقة المحددة       |  |                        |

1. حدد المنطقة التي تريد قصها باستخدام أدوات تحديد المنطقة.

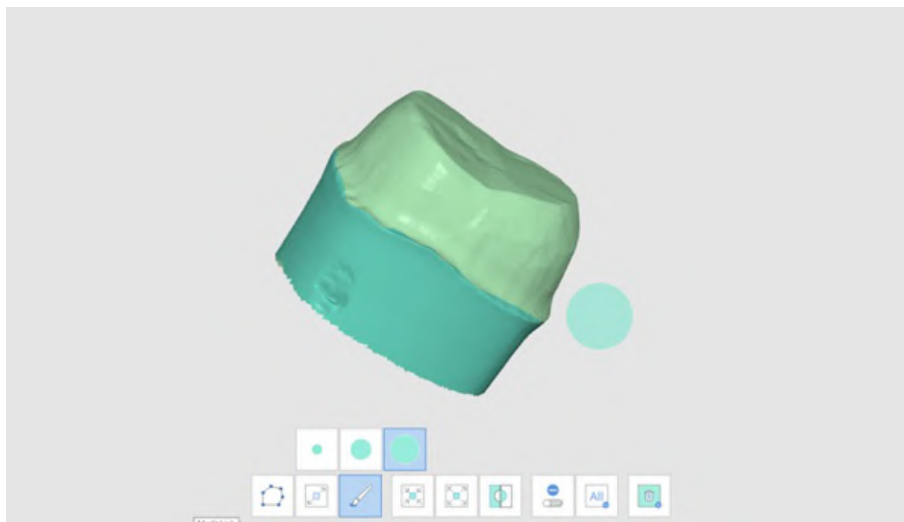


## ملاحظة


تقوم أداة القص متعدد الخطوط بتحديد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة، بينما تقوم أداة القص بالفرشاة بتحديد بيانات الوجه الأمامي فقط.

2. يمكنك عكس التحديد أو تقليصه أو توسيعه باستخدام الأدوات الثلاثة التالية.


- عكس المنطقة المحددة

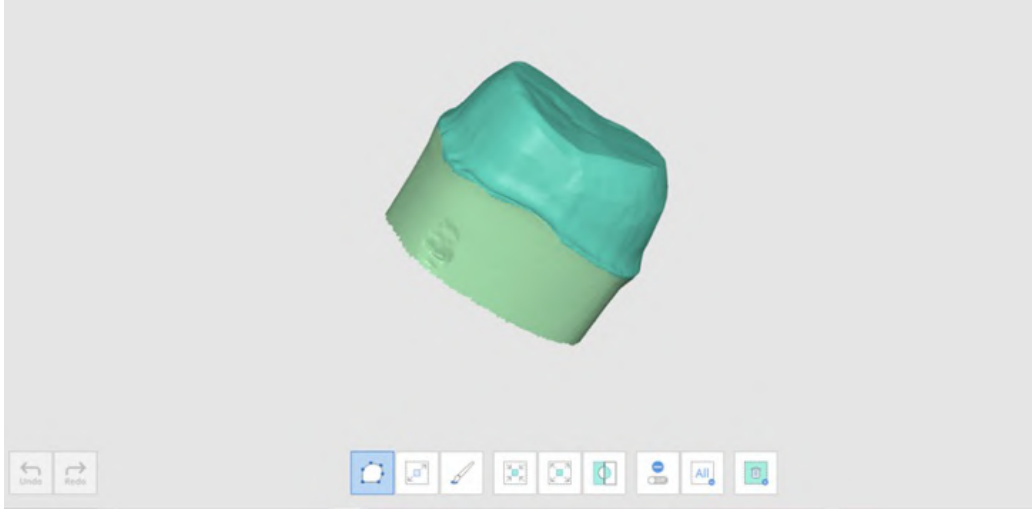

- تقليص المنطقة المحددة

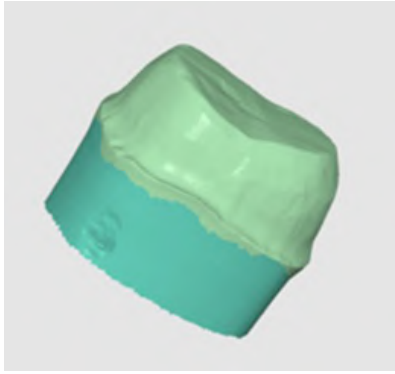


- توسيع المنطقة المحددة

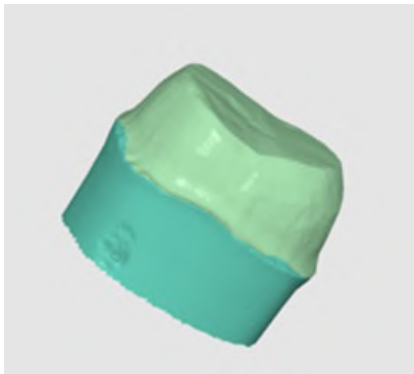

3. يمكنك إلغاء تحديد المناطق المحددة باستخدام أداة حذف المنطقة المحددة.

## تحسين محاذاة الإطباق

تحسين محاذاة الإطباق. يمكنك اختيار البيانات الهدف وضبط محاذاة الإطباق.

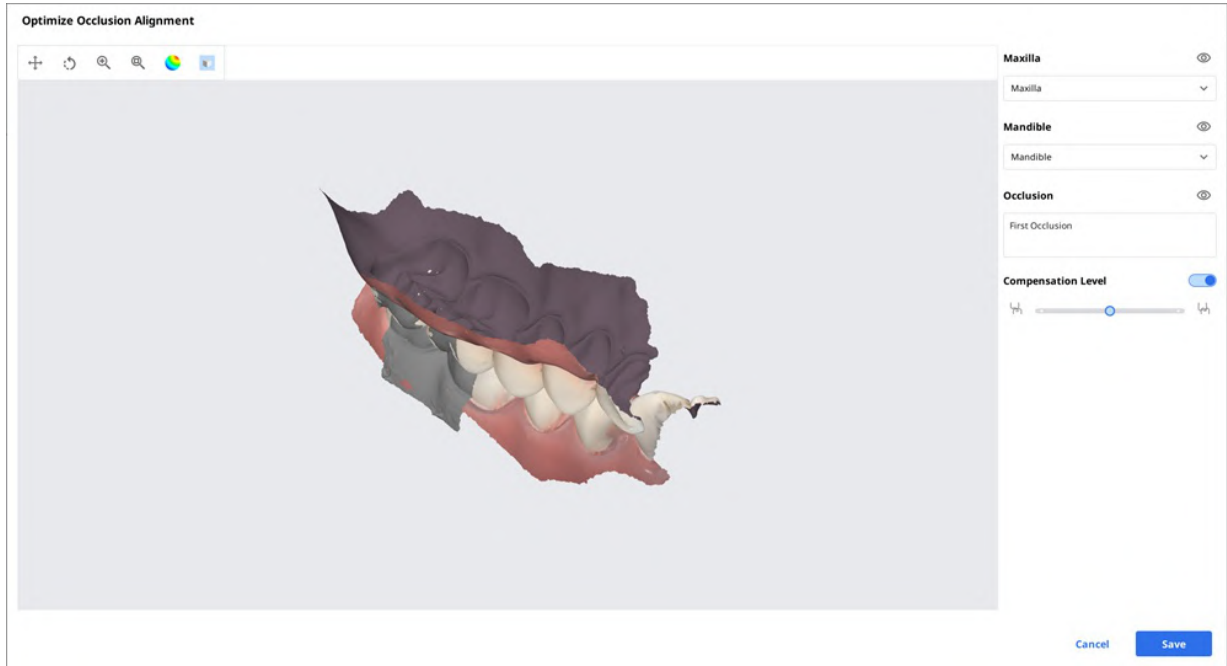


مستوى التعويض



## حركة الفك السفلي

يمكنك تشغيل حركات الفك السفلي المسجلة في Medit Scan for Clinics لرؤية تلامست الإطباق الديناميكية بين الأسنان العلوية والسفلية.

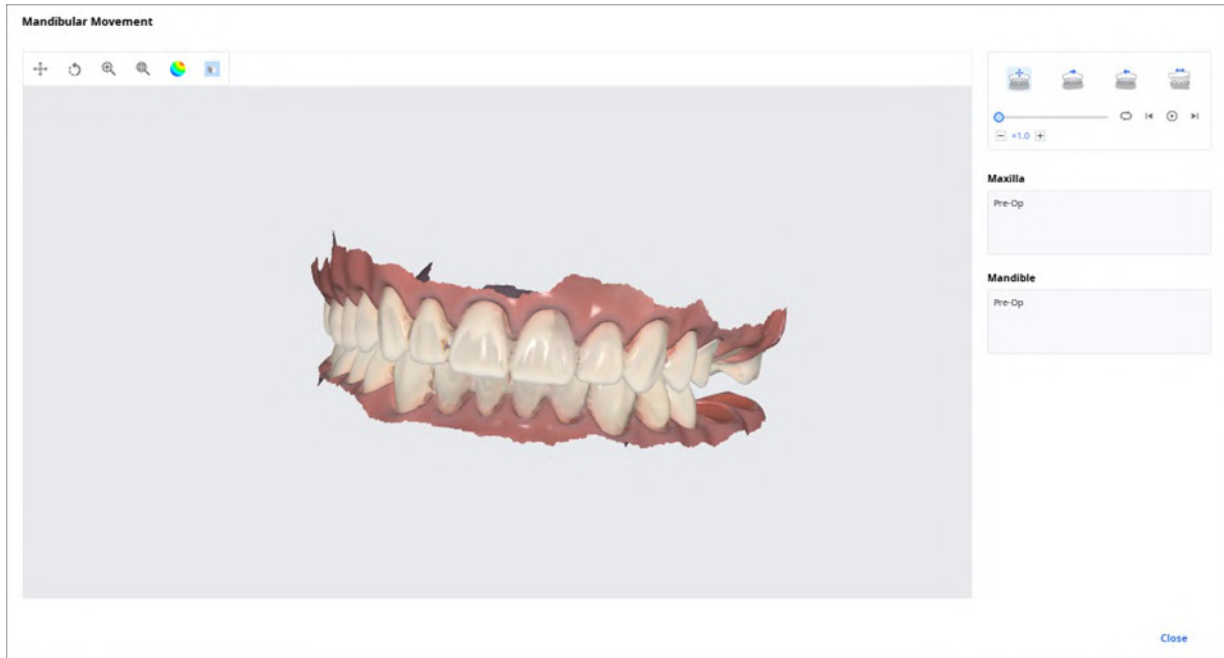

|                                                   |                        |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|--|
| تشغيل تسجيل حركة الفك السفلي الحرة.               | الحركة الحرة           |  |
| قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليسار. | الحركة الجانبية اليسرى |  |
| قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليمين. | الحركة الجانبية اليمنى |  |
| قم بتشغيل تسجيل الفك وهو يتحرك إلى الأمام.        | الحركة التبارزية       |  |

## إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات

يمكنك الحصول على نتائج متعددة لبيانات الإطباق من تطبيق Medit Scan.

يوفر Medit Link وظيفة لإدارة النتائج من خلال "عارض الملفات".

### كيفية إدارة نتائج متعددة


عندما يحصل المستخدم على نتائج إطباق متعددة من Medit Scan for Clinics، يوفر Medit Link خيار تحديد نتيجة.

يتم سرد قائمة النتائج بالاسم، ويمكنك تحديد عنصر واحد.

سيظهر النموذج المحدد في "شجرة البيانات" و "منطقة عرض النموذج".



يمكنك طي القائمة وتغيير العنصر باستخدام رموز الأسهم.

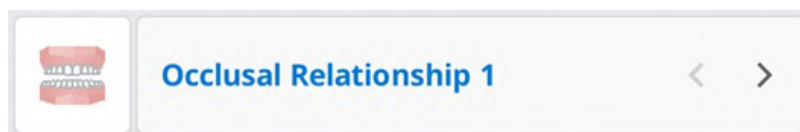

## خيارات العرض

يمكنك تغيير خيارات العرض لتخصيص تخطيطات قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

## View Options

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Status Filters</b> | 2 in use >           |
|  <b>Table Items</b>    | 8 in use >           |
|  <b>View Type</b>      | List View >          |
|  <b>Grouping</b>     | None >               |
|  <b>Sorting</b>      | Last Modified Date > |

## فلتر الحالة

إظهار أو إخفاء كل فلتر يمثل حالة الحالة. لا يتم عرض فلتر الحالة المخفية على الشاشة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

يمكنك بسهولة العثور على الحالة التي تحتاجها باستخدام فلتر الحالة.

- يمكنك النقر على الحالة التي تريد عرضها لعرض الحالات في تلك الحالة فقط.
- يمكنك تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

تتوفر خيارات الفلتر التالية لكل box:

| فلتر الحالة                                                                         | Box       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed | Case Box  |
| All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed           | Order Box |
| All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed   | In Box    |
| All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done                     | Work Box  |

## عناصر الجدول

حدد العناصر المراد عرضها في قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. يمكنك تغيير ترتيب عناصر الجدول أو ضبط عرض عمود الجدول في عرض القائمة لتحسين بيئة المستخدم.

تتوفر عناصر الجدول التالية لكل box:

| عناصر الجدول                                                                                                                                  | Box       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| اسم المريض / رقم تعريف المريض / الجنس / عدد الحالات / تاريخ التسجيل / تاريخ الولادة / تاريخ آخر مسح ضوئي                                      | Patient   |
| الحالة / اسم الحالة / تاريخ الولادة / معلومات التسجيل / تاريخ آخر تحديث / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / اسم المختبر                             | Case Box  |
| الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ آخر تحديث                   | Order Box |
| الحالة / اسم الحالة / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ آخر تحديث / اسم العيادة                                                     | In Box    |
| الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / معلومات التسجيل / تاريخ آخر تحديث / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ المسح الضوئي / اسم العيادة / تاريخ الطلب | Work Box  |

## نوع العرض

قم بتغيير نوع العرض بين العرض في صورة معرض والعرض في صورة قائمة في Case Box.

تتوفر خيارات نوع العرض التالية لكل box:

| خيارات نوع العرض                           | Box       |
|--------------------------------------------|-----------|
| العرض في صورة قائمة                        | Patient   |
| العرض في صورة قائمة / العرض في صورة المعرض | Case Box  |
| العرض في صورة قائمة                        | Order Box |
| العرض في صورة قائمة                        | In Box    |
| العرض في صورة قائمة                        | Work Box  |

## التجميع

حدد خيار تجميع لتصنيف الحالات في القائمة وإعادة ترتيبها حسب الخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات التجميع التالية:

| خيارات التجميع                                                    | Box       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| لا شيء / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب            | Case Box  |
| لا شيء / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب | Order Box |
| لا شيء / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب                      | In Box    |
| لا شيء / تاريخ التسليم المطلوب                                    | Work Box  |

### ملحوظة

لا تتوفر خيارات التجميع في Case Talk، Patient، Trash Box.

## الفرز

حدد خيار الفرز لتغيير ترتيب الحالات في القائمة وفقاً للخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات الفرز التالية:

| Box       | التجميع               | خيارات الفرز                                                                                     |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient   | -                     | اسم المريض / رقم تعريف المريض / تاريخ الولادة / تاريخ التسجيل / عدد الحالات / تاريخ آخر مسح ضوئي |
| Case Box  | لا شيء                | اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر                    |
|           | اسم المريض            | تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر                                 |
|           | تاريخ المسح الضوئي    | اسم المريض/تاريخ اخر تحديث/تاريخ الطلب/اسم المختبر                                               |
|           | تاريخ الطلب           | اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / اسم المختبر                                  |
| Order Box | لا شيء                | اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر              |
|           | تاريخ المسح الضوئي    | اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر                                   |
|           | تاريخ الطلب           | اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر                            |
|           | تاريخ التوصيل المطلوب | اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر                                      |
| In Box    | لا شيء                | اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة                                   |
|           | تاريخ الطلب           | اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم العيادة                            |
|           | تاريخ التسليم المطلوب | اسم المريض / تاريخ الطلب / اسم العيادة                                                           |
|           | لا شيء                | اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة                               |
| Work Box  | تاريخ التسليم المطلوب | اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة                                                       |
|           |                       |                                                                                                  |

ملحوظة

لا تتوفر خيارات الفرز في Case Talk و Trash Box.

## الفلتره والبحث

### فلتره حسب المريض

فلتره وعرض الحالات حسب اسم المريض. يمكنك إنشاء قائمة عن طريق فلتره المرضى الذين تحتاج إلى العمل عليهم فقط.

**MEDIT Link**

 Dashboard

**Case Box**

Patient

☒ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

1. أدخل اسم مريض.

Patient

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ wonhoon.choi / - / - / -

☐ won / - / - / -

2. اختر المرضى من بين نتائج البحث أدناه.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. يتم عرض حالات المرضى المختارين فقط في القائمة.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi\_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

| Status          | Patient Name | Case Name                      | Form Information                                       | Last Modified Date  | Scan Date          | Lab Name | Order Date |
|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|
| Form Only       | wonhoonchoi  | originalcase                   | -                                                      | 2023-10-05 오전 8:10  |                    |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case             | -                                                      | 2023-10-05 오전 8:09  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileVierTest_1                 | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-06-15 오전 8:14  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone         | 2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8... | 2023-05-25 오후 2:05  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-03-15 오후 3:06  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone - Clone | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-03-09 오후 4:41  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Need Processing | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-14 오전 8:13  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-10 오전 11:27 | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | testsamplecase                 | -                                                      | 2023-02-10 오전 7:39  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | Multi Occlusion                | -                                                      | 2023-02-09 오전 9:26  | 2023-02-09 오전 9:01 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileVierTest_1 - Clone - Clone | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-09 오전 8:50  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Case Completed  | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case             | 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay                         | 2022-10-13 오후 10:30 | 2022-10-11 오후 5:16 |          |            |
| Case Completed  | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case             | -                                                      | 2022-10-13 오후 10:28 |                    |          |            |

## الفلتر حسب التاريخ

قم بفلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال المدة المحددة.

1. انقر على فلتر المدة.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد المدة من القائمة.

- الكل: إظهار كل الحالات.
- النطاق المخصص: حدد تاريخي البدء والانهاء لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة.
- اليوم: اعرض الحالات التي تم تعديلها اليوم.
- أمس: اعرض الحالات التي تم تعديلها أمس.
- الأيام السبعة الماضية: اعرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال السبعة أيام السابقة باستثناء اليوم.
- آخر 30 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 30 يومًا باستثناء اليوم.
- هذا الشهر: عرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال هذا الشهر.
- الشهر الماضي: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال الشهر الماضي.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

## إمكانات البحث المتقدم

استفد من إمكانات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تريدها.

All Search / Contains

تتوفر معايير البحث التالية لكل box:

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| الكل، اسم المريض، رقم تعريف المريض                                           | Patient             |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، معلومات التسجيل، اسم المختبر | Case Box            |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر، رقم تعريف الطلب | Order Box           |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة،                                   | In Box              |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، معلومات التسجيل، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب  | Work Box            |
| اسم Case Talk (يحتوي)، اسم المريض (يساوي)                                    | Case Talk           |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم المختبر، حذف بواسطة                        | Trash Box (العيادة) |
| الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، حذف بواسطة                        | Trash Box (المختبر) |

يمكنك تحديد معايير البحث والاختيار بين منطق "يحتوي" و "يساوي".

All All / Contains

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

## إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات

### إنشاء حالات

#### إنشاء حالات في Case Box (العيادة)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

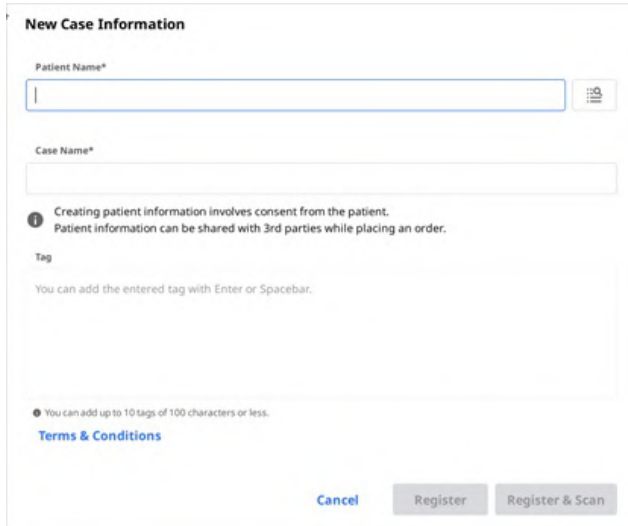

**New Case Information**

Patient Name\*

Case Name\*

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)


[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. أدخل المعلومات الأساسية، مثل اسم المريض واسم الحالة.

- إذا أدخلت اسمًا غير موجود في قائمة المرضى، فسيتم إضافة مريض جديد.
- إذا قمت بإدخال اسم موجود في قائمة المرضى، يمكنك اختياره من القائمة.
- في حالة تسجيل حالة لمريض موجود، انقر على رمز قائمة المرضى لاختيار مريض موجود.



- في مربع حوار قائمة المرضى، يمكنك تسجيل مريض جديد أو تعديل معلومات مريض موجود.

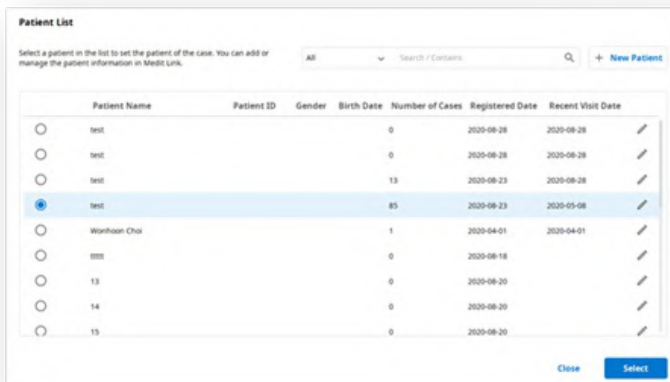

**Patient List**

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in [Patient Link](#).

ALL Search / Contains

|                                  | Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |  |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-09-28      | 2020-09-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-09-28      | 2020-09-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |  |
| <input type="radio"/>            | Worham Choi  |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |

[Close](#) [Select](#)

3. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. انقر على "تسجيل & مسح" لإكمال تسجيل الحالة ومتابعة المسح.

- تسجيل: سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. هذا مفيد عند تسجيل حالات متعددة.
- تسجيل & مسح: انتقل إلى تبويب النموذج لتسجيل معلومات النموذج للحالة.

#### إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

**New Case Information**  

Clinic Name\*

Patient Name\*

Case Name\*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. أدخل أو اختر اسم العيادة.
3. أدخل اسم المريض واسم الحالة. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.
4. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار تاريخ انتهاء العمل.
5. بعد تسجيل الحالة، سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

## تعديل الحالات

### تعديل الحالات في Case Box (العيادة)

1. انقر فوق رمز "تعديل" بجوار اسم الحالة.

**Edit Case Information**  

Patient Name\*

Test Occlusion

✓

 "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name\*

mandibular movement - Clone - Clone

Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. انقر على "بحث" لتغيير اسم المريض. لاحظ أنه لا يمكن تعديله مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على اسم المريض الذي ترغب في استبدال الاسم الحالي به ويمكنك تعديل معلومات المريض من القائمة.

**Patient List**

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

|                                  | Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |  |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |  |
| <input type="radio"/>            | Wonhoon Choi |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |  |
| <input type="radio"/>            | ttttt        |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |  |
| <input checked="" type="radio"/> | 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |

Close Select

3. تحقق من اسم المريض الذي تريد استبدال الاسم الحالي به.
4. لإنشاء مريض جديد، اضغط على "مريض جديد".
5. استخدم زر "تعديل" لتغيير المعلومات المسجلة عن المريض.
6. انقر على "تطبيق" لإنهاء العملية.

## تعديل الحالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على "تعديل" بجوار اسم الحالة.

**Edit Case Information**

Clinic Name\*

test

Patient Name\*

test

Case Name\*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. انقر على "تطبيق" بعد الانتهاء من التعديل.

ملحوظة

لا يمكنك تعديل معلومات الحالات التي تم استلامها من خلال الطلب في In Box.

## استنساخ الحالات

## استنساخ حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. سوف تُسأل عن نوع المعلومات التي ترغب في استنساخها في الحالة الجديدة.

**Information**  
 Select a clone type.  
  

Cancel Form Data Only All Data

3. اختر ما إذا كنت تريد نسخ معلومات النموذج فقط أو كل البيانات.

4. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

## استنساخ حالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. قم بتكرار جميع البيانات لإنشاء حالة جديدة.

3. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

## حذف حالة

### حذف حالة (العيادة والمختبر)

1. انقر على رمز "حذف".



2. انقر على "OK" لحذف الحالة.

**Warning**  
 Do you want to delete the case?  
  

Cancel OK

3. يتم نقل الحالات المحذوفة إلى الTrash Box ويمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

## معلومات التسجيل

يمكنك إدخال معلومات النموذج بناءً على البرنامج المتصل ونوع العلاج. سيتم استخدام المعلومات التي تدخلها كمعلومات أساسية للعمل على المسح الضوئي أو برامج CAD والطلب.

### تسجيل معلومات التسجيل في Case Box

#### الإدخال في تبويب النموذج

1. حدد ما إذا كنت ستدخل معلومات العلاج استناداً على الأسنان أو القوس.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
  - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
  - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
3. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

### تسجيل معلومات التسجيل في Work Box

#### الإدخال في تبويب النموذج


1. حدد برنامج المسح الذي تريد استخدامه.
2. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
3. قد تختلف الطرق وفقاً لبرنامج المسح المحدد.

| Medit Scan for Labs | Medit Scan for Clinics |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| O                   | O                      | الأسنان       |
| O                   | O                      | القوس         |
| O                   | X                      | Multi-Die مرن |
| O                   | X                      | Multi-Die     |

4. حدد أرقام الأسنان، القوس أو القالب لعملية المسح.
5. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
  - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
  - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في القائمة.
6. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

## توصيل الأسنان بجسر

يمكنك توصيل عدة أسنان بجسر عند تطبيق نفس المادة على عدة أسنان متجاورة. انقر على رمز الجسر بجانب الأسنان المحددة لتوصيلها أو فصلها.

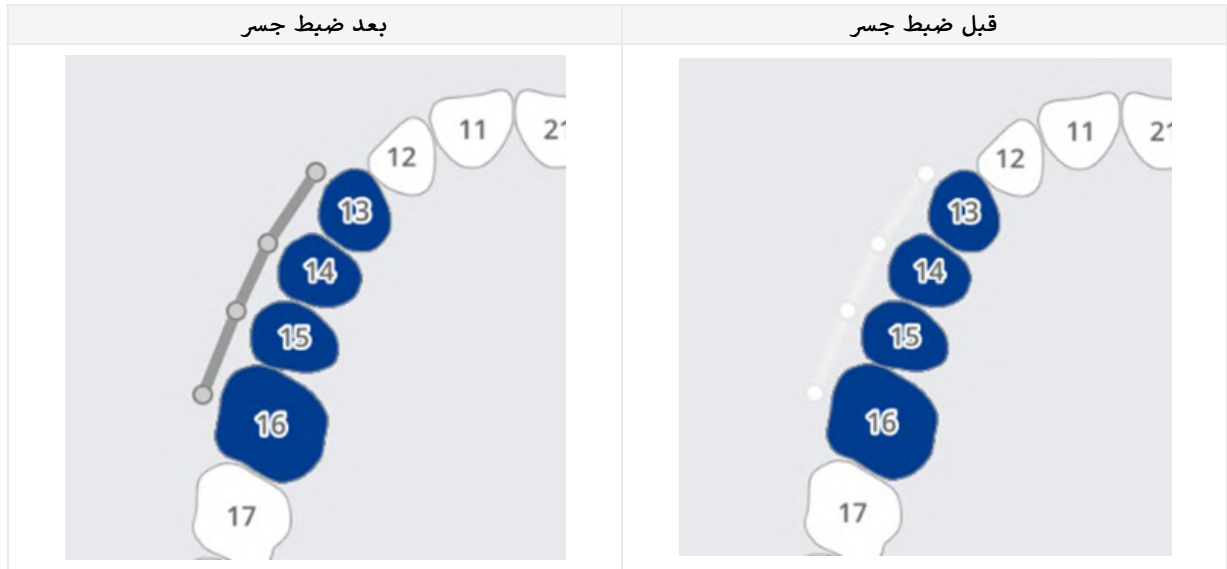

## ضبط خيارات المسح

اعتمادًا على البرنامج الذي تعمل به، يتم توفير خيارات مسح مختلفة.

يتم تمرير خيارات المسح المحددة لكل برنامج مسح ضوئي.

## Medit Scan for Labs

### خيارات عامة

|                                                                                          |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| قم بتمريك الأسنان المجاورة والمحضرة والمجاورة وقم بتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح. | الأسنان المجاورة |  |
| قم بتعليم المقابل تلقائيًا وتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.                        | المقابل          |  |
| قم بعرض خيارات تحديد المفصلة في برنامج المسح.                                            | المفصلة          |  |
| اسمح باستخدام استراتيجية المسح "حركة الفك" في برنامج المسح.                              | دليل الحركة      |  |

### خيارات بالأسنان

|                                                                   |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| اسمح بتعيين استراتيجية لمسح دلائل الزرعات في برنامج المسح.        | دليل الزرعة        |  |
| اسمح بتعيين إستراتيجية لمسح نموذج ما قبل العملية في برنامج المسح. | مسح ما قبل العملية |  |
| اسمح بوضع استراتيجية لمسح النماذج الشمعية في برنامج المسح.        | مسح النموذج الشمعي |  |

## الإضافة إلى المفضلات

يمكنك تحديد منتج سريعًا عن طريق تسجيله كمنتج مفضل.

تتم إدارة قائمة المفضلات المسجلة كقالب ويمكن مشاركتها من خلال ميزات التصدير والاستيراد.

## الإضافة إلى المفضلات

1. حدد رقم السن.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
  - يمكن تسجيل النوع - الطريقة - المادة - اللون كمفضلة حتى إذا لم يتم تحديد جميعها.
3. انقر على رمز "النجمة".  

4. توجد مجموعة من المعلومات المحددة، باستثناء رقم السن، في قائمة البحث عن المفضلات.

## إدارة القوالب المفضلة

يمكنك تسجيل أنواع مختلفة من القوالب وإدارتها ومشاركتها.

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| أضف         | أضف قالبًا جديدًا.           |
| إعادة تسمية | أعد تسمية القالب الحالي.     |
| الحذف       | احذف القالب الحالي.          |
| تصدير       | تصدير القالب الحالي إلى ملف. |
| إستيراد     | إستيراد ملف قالب.            |

# العمل على المسح/CAD

## عملية المسح

بناءً على المعلومات التي تم إدخالها، يمكنك متابعة المسح.

1. أدخل/احفظ معلومات العلاج وحدد خيارات المسح اللازمة.
2. انقر على "مسح" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.

## عملية CAD


يوفر Medit Link تطبيق الاندماج DentalCAD لربط Medit Link إلى DentalCAD.

1. قم بتثبيت تطبيق DentalCAD Integration في الـ App Box.
2. انتقل إلى تفاصيل الحالة وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration في المشغل السريع.
3. حدد تطبيق DentalCAD المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسار في مربع الحوار المنبثق.
4. أدخل تفاصيل الحالة الممسوحة ضوئياً وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration، وسيؤدي هذا إلى انبثاق مربع حوار لإنشاء ملف dentalProject.
5. قم بتسجيل معلومات النموذج لبرنامج DentalCAD وانقر ugn "فتح" لفتح برنامج CAD.
6. إذا قمت بتثبيت تطبيق DentalDB Integration، فسيتم إرسال نتائج الـ CAD تلقائياً إلى مسار الحفظ المحدد في exocad. (حسابات المختبرات فقط)

## الاستفادة من التطبيقات الإضافية

### مُضاف المشغل السريع


يمكنك تشغيل العديد من التطبيقات الإضافية مباشرة من خلال النقر على أيقونات التطبيقات المثبتة في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها.

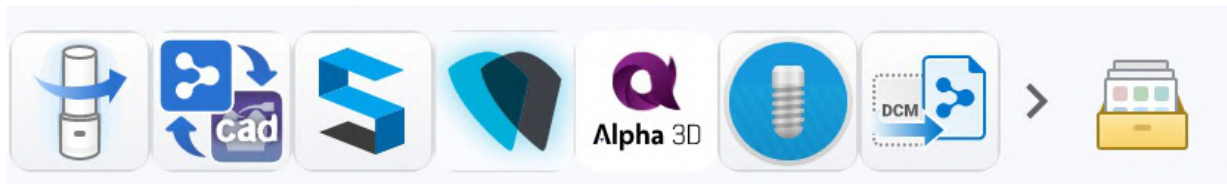


### إدارة مشغل التطبيقات

## App Launcher Management

### Quick Launcher

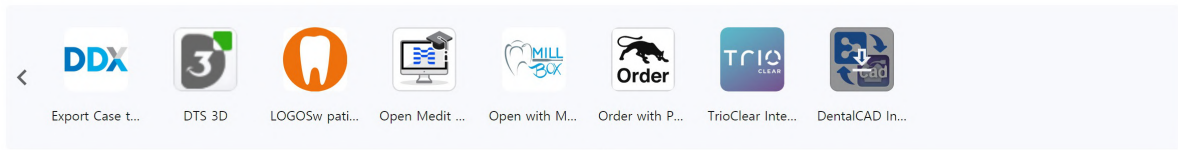

### All Apps

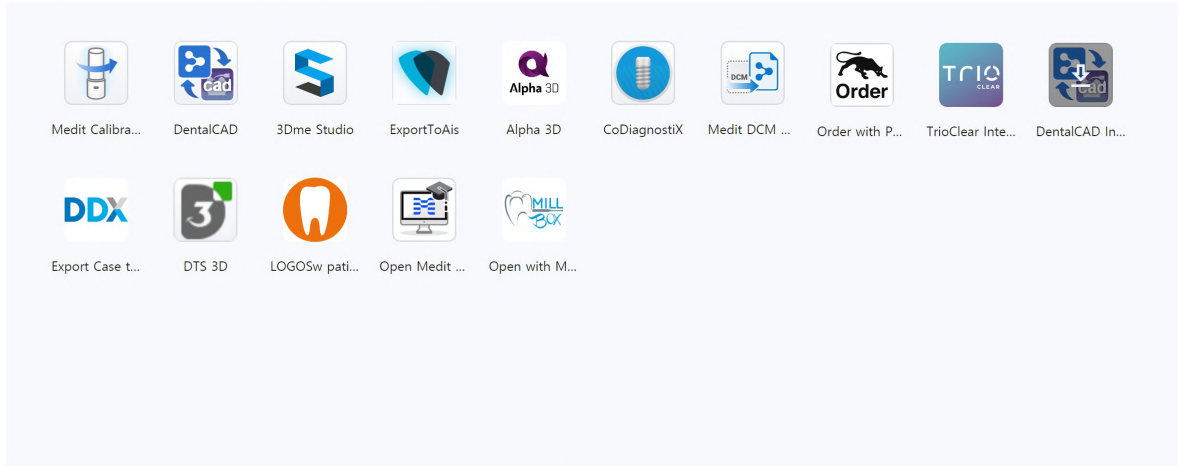

Close

## المشغل السريع

يمكنك تحديد التطبيقات التي تظهر في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها، أو يمكنك إنشاء مجلدات لتجميع التطبيقات المتشابهة معًا لتنظيمها.

## كل التطبيقات

يتم عرض جميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها. يمكنك النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة التطبيق لإضافة التطبيق إلى المشغل السريع. من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على القائمة، يمكنك أيضًا اختيار تشغيل التطبيق، تثبيته أو إلغاء تثبيته.

## الحصول على ملفات النتائج

### تصدير ملفات نتائج المسح

بالإضافة إلى مشاركة النتائج مع الشركاء من خلال الطلبات، يتيح لك Medit Link تخزين ملفات النتائج الخاصة بك بتنسيق الملف المطلوب باستخدام وظيفة التصدير.

**Export Files in This Case**

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصدير الملفات إلى             | حدد المسار الذي تريد تخزين ملفات النتائج فيه.                                                                                                                                                                                                |
| إسم المجلد                    | يقوم النظام بإنشاء مجلد جديد ويقوم بتخزين جميع ملفات النتائج فيه.<br>يتم تعيين اسم المجلد الافتراضي بواسطة قاعدة التسمية. ولكن يمكنك تغيير اسم المجلد مباشرة.<br>يمكنك تحديد قاعدة التسمية في الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم المجلد. |
| اسم الملف                     | قم بتعيين اسم الملف للنتيجة. تحدد قاعدة التسمية اسم الملف الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير اسم الملف مباشرة.<br>يمكنك تحديد قاعدة التسمية من خلال الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم الملف                                                    |
| النوع                         | اختر برنامج التصميم الذي تريد استخدامه.<br>سيعمل Medit Link على ضبط الملفات تلقائياً وفقاً لاختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون الحاجة إلى محاذاة إضافية للمحور.                                                                         |
| صبغة الشبكة                   | حدد تنسيق ملف الشبكة.                                                                                                                                                                                                                        |
| صبغة الصورة                   | حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.                                                                                                                                                                                                               |
| ضغط الملفات                   | اضغط جميع النتائج في ملف واحد.                                                                                                                                                                                                               |
| جمع الشبكات الفردية           | اجمع بين نتيجة الفك العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان الفردية. يكون ذلك مفيداً عندما يكون استيراد عدة ملفات إلى برنامج غير ممكن.                                                                                                              |
| تصدير كافة العلاقات الإطباقية | عندما يتم إنشاء نتائج إطباق متعددة من خلال تطبيق المسح، يمكنك تصدير جميع نتائج الإطباق بمرة واحدة.                                                                                                                                           |
| حفظ معلومات الحالة كملف PDF   | احفظ معلومات الحالة بصيغة PDF مع النتيجة.                                                                                                                                                                                                    |

## تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات

يمكنك تصدير ملفات النتائج لحالة أو حالات متعددة في وقت واحد باستخدام خيار "تصدير" الموجود أعلى قائمة الحالات في Case Box و Work Box.

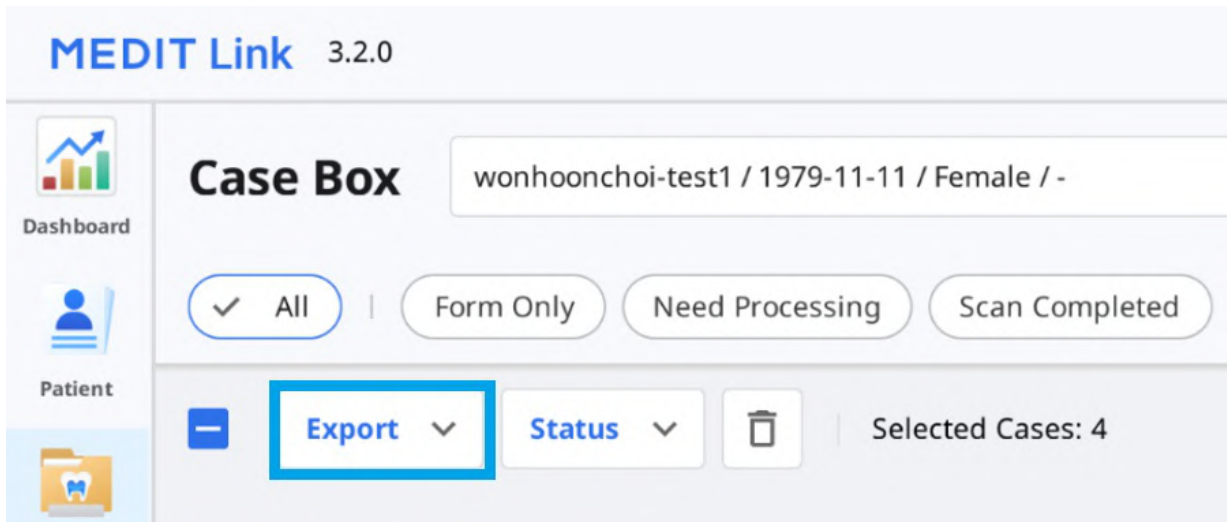

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد تصدير ملفات النتائج منها من القائمة.

**MEDIT Link** 3.2.0

**Case Box** wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾
 ☐ **Status** ▾
 ☐
 Selected Cases: 4

|                                     | Status         | Patient Name      | Case Name                | Form Information |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Form Only      | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Form Only      | wonhoonchoi       | originalcase             | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |

3. انقر على "تصدير" واختر "ملفات النتائج".

**Export** ▾

**Result Files**

**Case List (as shown)**

**Case List (with all items)**

4. قم بتعيين المجلد الوجهة، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

## Export Files in Selected Cases

### Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

### ملحوظة

لا يمكن تعديل حقلي "اسم المجلد" و"اسم الملف" عند تصدير الملفات لحالات متعددة. يتم إنشاء اسم المجلد واسم الملف تلقائيًا وفقًا للقواعد التي قمت بتعيينها لـ "قاعدة اسم المجلد" و"قاعدة اسم الملف" في الإعدادات > خيارات التصدير.

5. انقر على "تصدير".

6. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

## Question




Exporting successfully completed.  
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات

يمكنك تصدير ملفات نتائج المسح لحالة باستخدام أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".

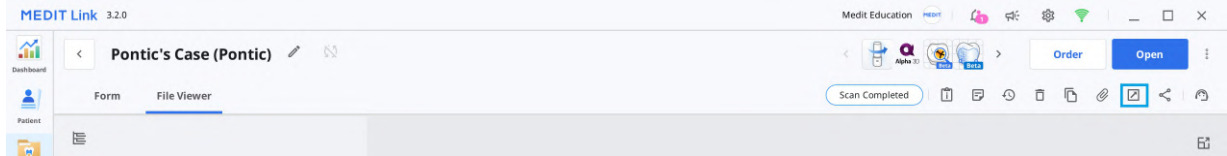

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".



4. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

**Export files in case**

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

5. في تبويب "قائمة الملفات"، يمكنك تحديد الملفات المطلوبة للحالة عن طريق إلغاء تحديد الملفات غير الضرورية.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒

Base

☒

Mandible

☒

Base

☒

Occlusion

☒

First Occlusion

☒

Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒

Maxilla

☒

Mandible

☒

Face Scan Data

☒

Face Scan Data

Close

Export

6. انقر على "تصدير".

7. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question

?

Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

## تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات

يمكنك تصدير ملف أو ملفات إلى مجموعة بيانات معينة من القائمة الموسعة في عارض الملفات.

122

**Pontic's Case (Pontic)**

Form **File Viewer**

- Raw Data
  - Maxilla Base
  - Mandible Base
  - First Occlusion
- Maxilla
  - Base
  - Margin Line
    - 25
    - 27
- Mandible
  - Base
- Occlusion

Context Menu for Maxilla:


- Show This Only
- Hide
- Export**
- Delete

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة النقاط الثلاث بجوار مجموعة البيانات أو على كيان في شجرة البيانات في تبويب عارض الملفات.

4. ثم انقر على "تصدير".

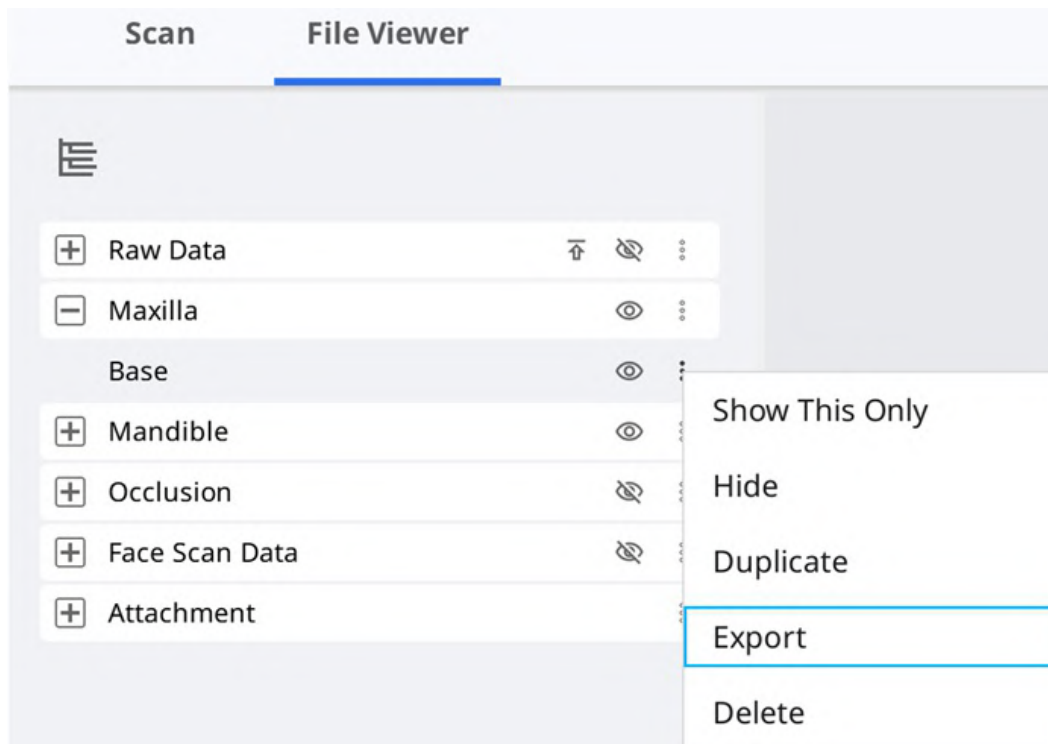

5. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

### Export files in case

Options
File List

Export Files To  
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name  
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name  
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type  
Maestro

Mesh Format
Image Format

Convert mesh files to the below formats  
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL  
☒ Do not convert the attached files

☐ Convert images to the below format  
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files  
☐ Combine Individual Mesh  
☐ Export All Occlusal Relationship  
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. يمكنك رؤية أن الملفات التي اخترتها في شجرة البيانات فقط هي المحددة في قائمة الملفات.

**Export Files in This Case**

Options **File List**

- ☐ Maxilla
  - ☐ Base
- ☒ Mandible
  - ☒ Base
- ☐ Occlusion
  - ☐ First Occlusion
  - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
  - ☐ Free
    - ☐ Maxilla
    - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
  - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

**Question**

 Exporting successfully completed.  
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

## تصدير قائمة الحالات كملف CSV

يوفر Medit Link وظيفة لتصدير قائمة الحالات بتنسيق CSV.

يمكنك تصدير قائمة الحالات بالمعلومات الأساسية وإدارة الحالات بسهولة.

1. انتقل إلى Case Box أو Order Box أو In Box أو Work Box.

2. حدد الحالات التي تريد تصديرها.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi\_clinic


Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk App Box

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01 - 2023-10-24 All / Contains

| Status         | Patient Name      | Case Name                | Form Information | Last Modified Date  | Scan Date          | Lab Name | Order Date |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-19 오전 11:00 |                    |          |            |
| Form Only      | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-05 오전 8:15  |                    |          |            |
| Form Only      | wonhoonchoi       | originalcase             | -                | 2023-10-05 오전 8:10  |                    |          |            |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-05 오전 8:10  | 2023-08-18 오전 9:00 |          |            |

3. انقر على "تصدير" وحدد "قائمة الحالات (كما هو موضح)" أو "قائمة الحالات (مع كافة العناصر)".

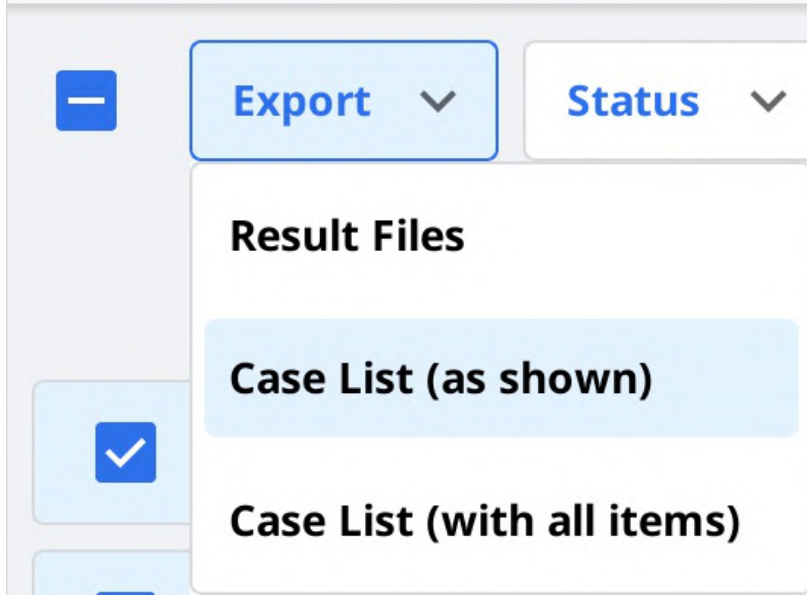

#### ملحوظة

قائمة الحالات (كما هو موضح): قم بتصدير قائمة الحالات بالعناصر المعروضة حاليًا على الشاشة. اذهب إلى خيارات العرض < عناصر الجدول لإظهار العناصر أو إخفائها حسب رغبتك.  
قائمة الحالات (مع كافة العناصر): قم بتصدير قائمة الحالات بكل العناصر، بما في ذلك الحالة، اسم الحالة، تاريخ الميلاد، معلومات النموذج، تاريخ آخر تحديث، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب واسم المختبر.

4. حدد المسار واسم الملف، ثم احفظ القائمة.

5. يتم حفظ قائمة الحالات كملف CSV.

## تصدير خط الإنهاء


يوفر Medit Scan for Clinics وظيفة لإنشاء خط الإنهاء، ويمكن لـ Medit Link نقل خط الإنهاء إلى برنامج CAD.

## تصدير خط الإنهاء كلون

بشكل عام، يحول Medit Link خط الإنهاء إلى لون ويصدر النتيجة مع الفك العلوي أو الفك السفلي معًا. يمكنك إنشاء خط الإنهاء في CAD بالإشارة إلى معلومات اللون.

مثال:

## الفك العلوي

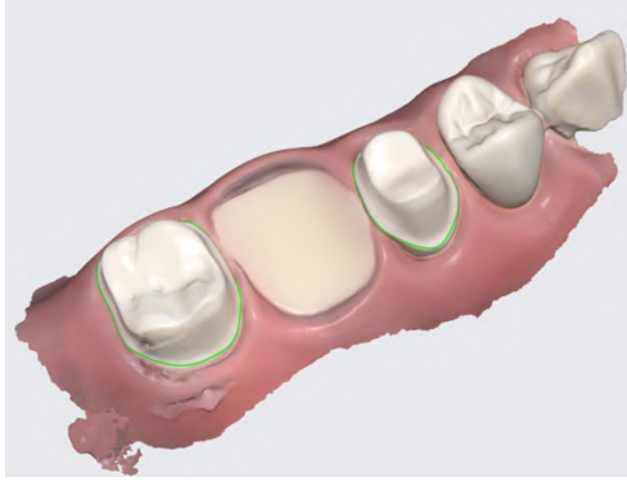

النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية

### ملحوظة

تتوفر هذه الميزة للتنسيقات التي تتضمن معلومات الألوان، مثل OBJ، meditMesh، وPLY. لا يتم تحويل خط الإنهاء إلى STL.

### ملحوظة



نوع < 3Shape لا يدعم هذه الميزة.

## تصدير خط الإنهاء كملف

في حالة Exocad، يقوم Medit Link بتصدير خط الإنهاء إلى "margin.xyz" والذي يمكن استيراده إلى exocad مباشرة.

يمكنك استخدام هذا الملف في exocad دون عمل إضافي.

مثال:
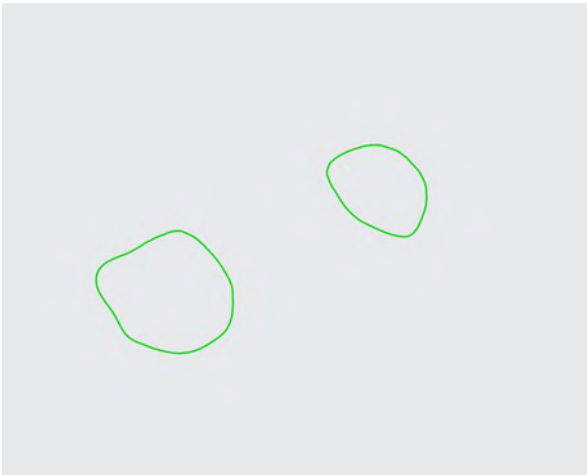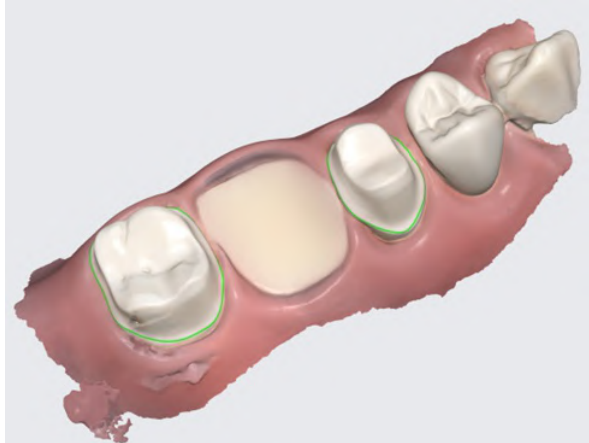
| خط الإنهاء                                                                                                                 | الفك العلوي                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>خطوط الإنهاء مصغرة كملفات فردية</p> |  <p>النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية</p> |

## تنزيل ملفات من موقع Medit Link

يوفر Medit Link وظيفة تنزيل.

إذا كنت ترغب في الحصول على ملفات النتائج دون تثبيت تطبيق Medit Link، يمكنك تنزيل الملفات من خدمة موقع Medit Link.

#### ملحوظة


يجب تحميل البيانات على سحابة Medit لتنزيل الملفات من الموقع.

تتوفر وظيفة التنزيل في القائمة التالية على موقع Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

## Case Box/Work Box

يمكنك العثور على زر "تنزيل" في الجزء العلوي الأيمن.

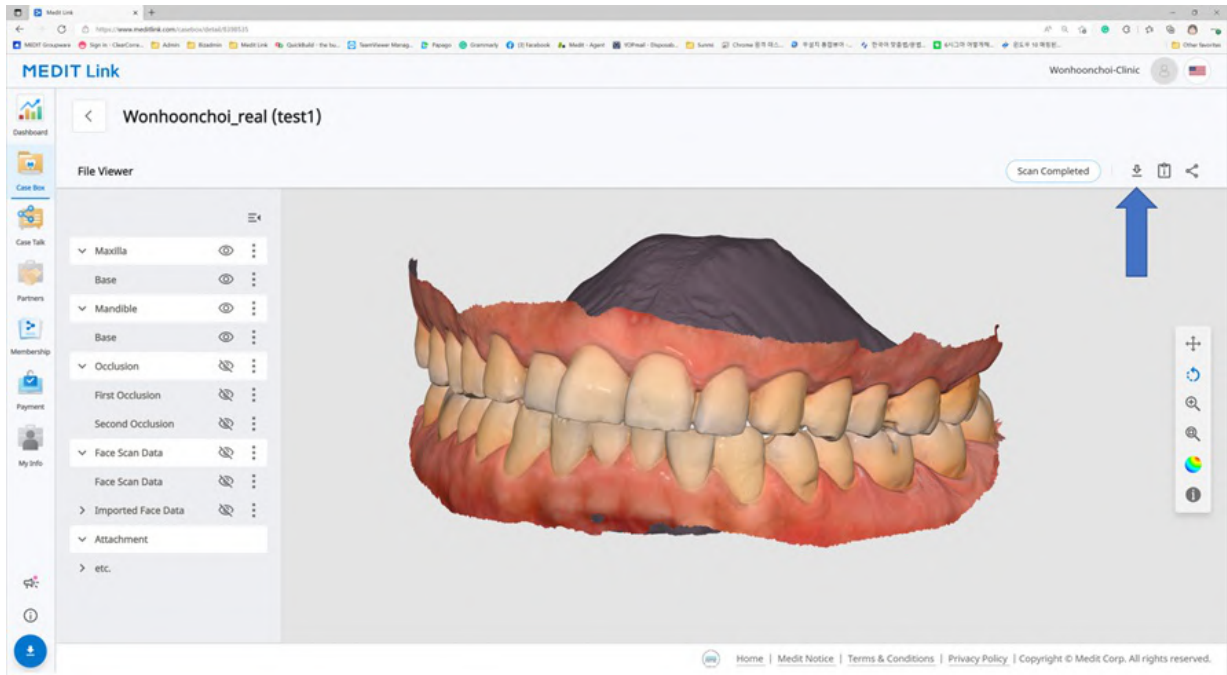

## Web Viewer

عند مشاركة الحالة باستخدام Case Talk، يمكنك تعيين ما إذا كنت ستسمح بالتنزيل أم لا.

إذا قمت بتحديد "منح إذن التنزيل" وشاركت الحالة، سيتمكن جميع المستخدمين الذين يتصلون بالرابط المشترك من تنزيل الملفات.

**Share through Case Talk**

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

في ال Web Viewer، يمكنك العثور على رمز "تنزيل" في الجزء العلوي الأيسر.

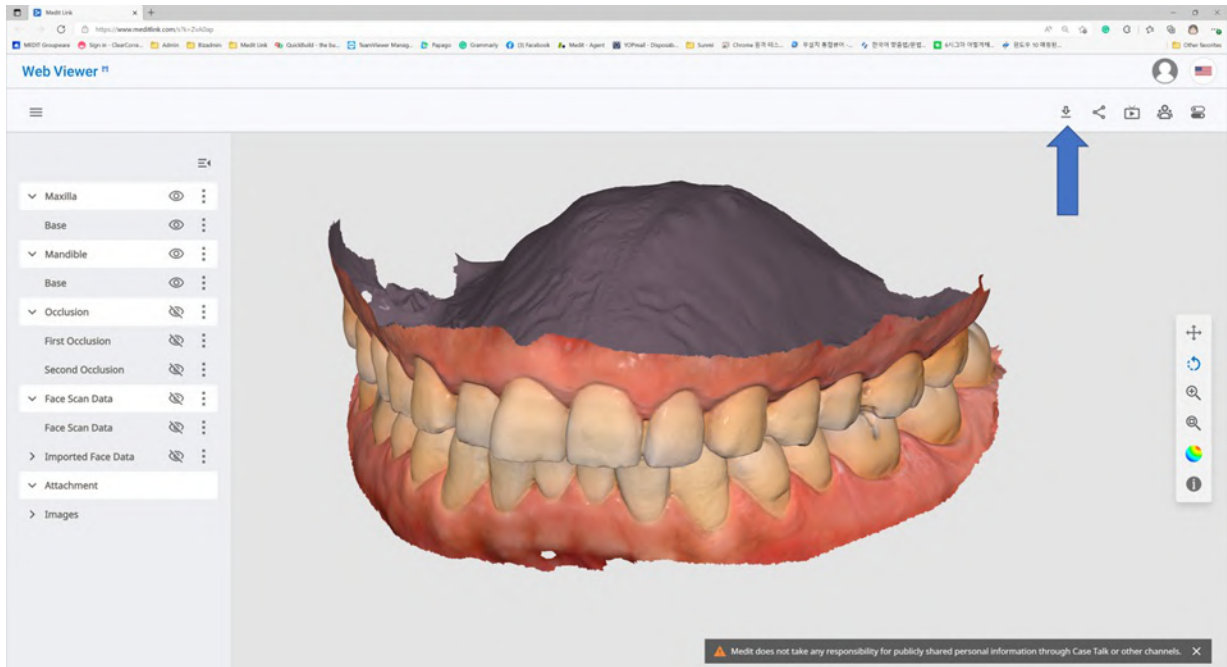

1. انقر على "تنزيل".



2. حدد تنسيق الشبكة من مربع حوار التنزيل.

## Download [Premium Feature](#)

The premium feature is provided to all users for a limited time.  
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

### Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

- i** The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
- i** The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. ثم انقر على "OK".

## طلب/إدارة الطلبات

يمكنك بسهولة طلب حالة بيانات تم الحصول عليها من برامج متصلة وإرفاقها من قبل المستخدم.

### طلب حالات

يمكنك تقديم طلب لشركائك في Case Box.

1. انقر على الزر "طلب".
2. تحقق من المعلومات المطلوبة لطلبك.

**Order**

**General** Order List File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name  
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name  
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date  
2023-04-13

Delivery Time  
AM 8:00 PM 8:00  
오전 8:15

Memo

Tags  
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. اختر شريك.
4. تحقق من معلومات المنتج من علامة تبويب قائمة الطلبات.
  - يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد مشاركة اسم المريض.
5. تحقق من الملفات للطلب من علامة تبويب قائمة الملفات.
6. أدخل تاريخ التسليم المطلوب.
  - يتم تعيين القيمة الافتراضية على 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
7. يمكنك إضافة مذكرة وعلامات لشريكك لتوضيح تفاصيل محددة.
8. عندما يتم إنشاء العديد من نتائج الإطباق على تطبيق المسح، يمكنك إرسال جميع نتائج الإطباق مرة واحدة عن طريق تحديد "ترتيب كافة العلاقات الإطباقية".

9. تابع طلبك.

## تأكيد الطلب (In Box)

- اقبل الطلب عند استلامه.
- ستم إعادة توجيه الطلبات المقبولة إلى Work Box.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order' (highlighted with a red box). Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## إلغاء الطلب (Order Box)

- يمكنك إلغاء الطلب قبل أن يقبله شريكك.
- يمكن إعادة طلب الحالات الملغاة.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and a 'Cancel' button (highlighted with a red box). Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## رفض طلب (In Box)

- يمكنك رفض طلب مستلم.
- يمكن إعادة طلب الحالات المرفوضة.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' (highlighted with a red box) and 'Confirm Order'. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## التحقق من الحالات المطلوبة

يمكنك التحقق من تفاصيل الحالة التي طلبتها من Order Box في حساب العيادة. يمكنك أيضًا التحقق من الحالة التي تلقيتها من In Box حساب المختبر.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The top bar includes the logo, version, and user information. The left sidebar has navigation icons. The main area is divided into two panels. The left panel shows order details for 'test's Case - Clone / wh-clinic-ds...' with fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, Expected Delivery Date, and Memo. The right panel shows a table of items with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The table lists four items, all of type 'Inlay' and material 'Multi-Layered Zirconia'.

| No. | Type  | Method | Material               | Shade      |
|-----|-------|--------|------------------------|------------|
| 3   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 4   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 5   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 6   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |

|               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلومات الطلب | المعلومات التي يمكن تضمينها في الطلب هي كما يلي: رقم تعريف الطلب / اسم المريض / اسم الحساب / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم / تاريخ استحقاق التسليم / المذكرة. يمكنك التحقق من تفاصيل المنتج المطلوب و معلومات التوصيل. |
| قائمة الطلب   | تعرض قائمة الطلب تفاصيل المنتج المطلوب.                                                                                                                                                                                            |
| الشحن         | أدخل/تحقق من معلومات الشحن.                                                                                                                                                                                                        |

## إدخال معلومات الشحن (In Box)

أدخل معلومات الشحن للحالة المكتملة وابدأ الشحن.

1. انقر على علامة تبويب الشحن.
2. أدخل معلومات الشحن وانقر على "تسجيل".

### Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.  
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. يتم إرسال المعلومات المدخلة إلى شريكك.

## إدارة تاريخ التسليم

يمكنك تعيين تاريخ التسليم المتوقع عند تقديم طلب، وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى شريكك.

### تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)

- عند الطلب من Case Box، يمكنك إدخال تاريخ التسليم المطلوب.

**Order**

General Order List File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

 **WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13 Delivery Time: 오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags  
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order  
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- المدة الافتراضية هي 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
- أدخل التاريخ/الوقت الذي ترغب استلام المنتجات فيه وتابع الطلب.
- يمكنك ضبط الوقت بسهولة باستخدام شريط التمرير.

## تحديد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر)

- يمكنك إدخال تاريخ التسليم المتوقع للحالة المطلوبة من In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 오전 7:56 Order Date: 2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01

Memo: <Scanbody Library>  
16 : 00ENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
15 : 00ENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
14 : 00ENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10

Order List Shipment

| No. | Type          | Method            | Material               | Shade      | Price |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|------------|-------|
| 16  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 15  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 14  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |


Total KRW 0

1. تحقق من تاريخ التسليم المطلوب مع الشريك وأعد الجدولة باستخدام الزر "تعديل".



2. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار يوم العمل الفعلي. إذا لزم الأمر، يمكنك ترك تعليق أيضًا.

3. انقر على "تطبيق".

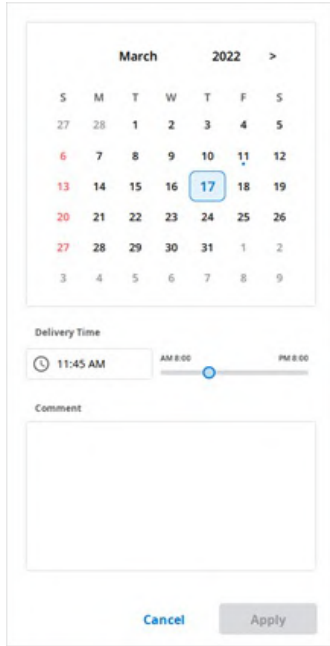

4. سيتم إعادة توجيه تاريخ التسليم المتوقع والمذكرة مع الطلب.

- يمكنك التحقق من التاريخ والمذكرات في Order Box.
- يمكنك تغيير تاريخ التسليم المتوقع، وستتم إعادة توجيه التغييرات إلى شريك.
- 5. يمكنك التحقق من سجل الحالة باستخدام زر "سجل".



## إكمال الحالة

### الإكمال (Work Box/In Box)


بمجرد الانتهاء من جميع المهام، انقر على "تم" لإكمال الحالة.

### أكمل حالة من تفاصيل الحالة

يمكنك العثور على أيقونة النقاط الثلاث على اليمين من زر "فتح" أو "إعادة المسح".



أكمل العمل بالنقر على الأيقونة واختيار "Done".

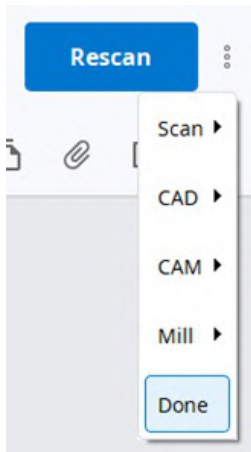

## أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات

1. اذهب إلى Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد إكمالها.

| Status    | Case Name     | Patient Name     | Form Information |
|-----------|---------------|------------------|------------------|
| Form Only | tsstt's Case  | tsstt            | -                |
| Form Only | test's Case   | test             | -                |
| CAD       | Maxilla Crown | Scan for Clinics | 14-Crown         |
| CAD       | Maxilla Crown | Scan for Clinics | 14-Crown         |

3. انقر على "الحالة" وحدد "Done".

## الإكمال (Case Box/Order Box)

بعد اكمال الحالة من ناحية المختبر، تحتاج العيادة إلى تأكيد الحالة لإكمال عملية الطلب بأكملها. يمكن للعيادة العثور على زر "تأكيد التسليم" في Order Box في حالة اكمال المختبر عمله. انقر على هذا، نكتمل عملية الطلب، وسيتم تغيير حالة الحالة إلى "Case Completed".

test's Case - clone (test)

Order File Viewer

Confirm Delivery

Shipped

## أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box

بالنسبة للحالات التي لم يتم طلبها من المختبر، يمكنك إكمال هذه الحالات في Case Box.

1. اذهب إلى Case Box.
2. حدد الحالة التي تريد إكمالها.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

## Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

|                                     | Status         |                   | Case Name                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Ordered        | test              | test's Case              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test test(1234)   | G11598492310180503424    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test              | test's Case              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test              | test's Case              |

3. انقر على "الحالة" وحدد "Case Completed".

## التواصل باستخدام العلامات

يمكنك إضافة معلومات إضافية عن حالتك باستخدام العلامات وإرسالها إلى شركائك.

### إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة

يمكنك إدخال علامات عند إنشاء حالة جديدة أو تعديل معلومات الحالة.

**New Case Information**

**Patient Name\***



**Case Name\***



Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

**Tag**

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

يمكنك بسهولة البحث عن وتحديد العلامات التي استخدمتها من قبل.

### New Case Information

Patient Name\*

Case Name\*

**i** Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

## إضافة علامات عند الطلب

يمكنك التحقق من العلامات وتعديلها في مربع حوار الطلب أثناء الطلب.

### Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

**i** You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

## تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

