

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

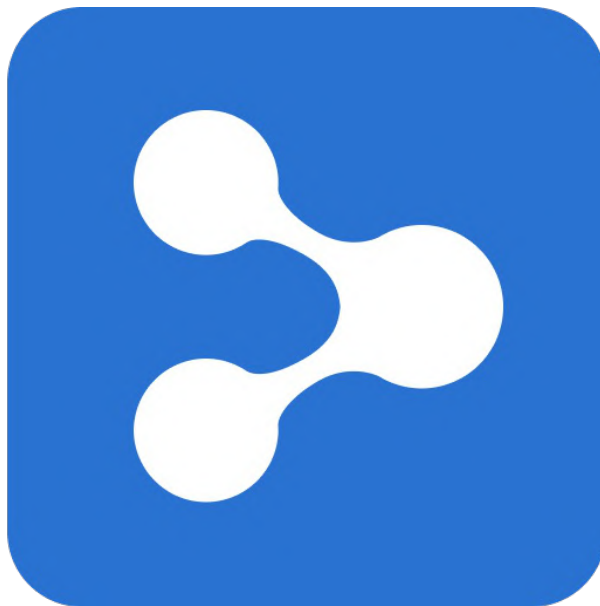


Table of Contents

Medit Link

Introduzione	7
Medit Link	7
Panoramica del servizio	7
Servizio Cloud	8
Piattaforma di gestione del flusso di lavoro con sistema di ordinazione	9

Medit Link > Installazione

Requisiti di sistema	10
Requisiti di sistema per Windows	10
Requisiti di sistema per macOS	10
Requisiti di sistema per il Web Service	10
Consigliati per i browser	10
Minimi per dispositivi mobili	10
Installazione su Windows	11
Installazione su macOS	14

Medit Link > Come iniziare

Registrati e accedi	18
Sito web Medit Link	18
Registrati	18
Login e pagina di benvenuto	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Panoramica dashboard	24
Medit Insights	24
Iscrizione a Medit Insights	25
Annullare l'iscrizione a Medit Insights	26
Patient	27
Ricerca del paziente	27
Case Box/Work Box	28
Filtraggio dei casi	28
Filtro per paziente	28
Filtro per stato	31
Filtro per durata	31
Filtro per ricerca	32
Dettagli del caso	32
Order Box/In Box	34
Dettagli ordine	34
Schede in Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Creazione di un Case Talk	35
Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione	36
Dettagli Case Talk	38
Web Viewer	39
Note	41
Commenti	42

Condivisione della schermata in tempo reale	42
Albero dei dati	42
Controlli dell'albero dei dati	42
Controlli del modello 3D	43
Partners	45
Cerca collaboratori	45
Elenco dei miei collaboratori	45
Invita il collaboratore	46
Membership	47
Abbonamento	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Archiviazione cloud	49
Sottoscrivere l'abbonamento	49
Annullare l'abbonamento	51
Il mio abbonamento	52
Dettagli	53
Rinnovare l'abbonamento	53
Come aggiungere un metodo di pagamento	54
Come cambiare un metodo di pagamento	55
Riscatto	55
Dettagli	56
Registrare il codice di riscatto	56
Attivare il codice di riscatto	57
Dettagli del pagamento	57
Visualizza i dettagli della fattura	58
My Info	60
Il mio account	60
La mia clinica/Il mio laboratorio (solo account Amministratore)	60
Il mio scanner	61
Altro menu	63
Avvisi & aggiornamenti	63
Siti web correlati	63
Scarica Medit Link App	64
 Medit Link > Medit Link App	
Panoramica	65
La seguente tabella riassume i menu disponibili in ciascuna tipologia di account (clinica o laboratorio).	65
Barra del titolo	66
Le mie informazioni	66
Notifiche	66
Avvisi e aggiornamenti	67
Impostazioni	67
Stato della rete	68
Impostazioni	70
Generali	70
Gestione dell'archiviazione	71
Imposta periodo	72
Archiviazione locale	72
Archiviazione cloud	72
Imposta il programma collegato	73
Opzioni di esportazione	73
Strumento di conversione dei casi	75

Esportare il caso	76
Importare il caso	77
Opzioni proxy	79
Informazioni	79
Manuale utente	80
Menu	81
Dashboard	81
Patient	81
Aggiungere un nuovo paziente	82
Rimuovere il paziente	82
Unire i pazienti	83
Case Box/Work Box	83
Schede in Case Box/Work Box	84
Funzioni in Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Schede in Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Tutto	87
Medit Apps	87
Scaricato	88
Trash Box	88
Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi	89
Upload	89
Download	90
Siti web correlati	90
Visualizzatore file	92
Albero dei dati	92
Strumenti di controllo del modello	92
Controlli del modello 3D	93
Controllo delle immagini 2D	94
Strumenti di funzione	94
Acquisizione delle immagini e Promemoria	94
Acquisizione ortodontica	95
Riempi i vuoti	96
Ritaglio	97
Ottimizza l'allineamento dell'occlusione	99
Movimento mandibolare	102
Gestire i dati dell'occlusione multipla nel visualizzatore file	102
Come gestire più risultati	102
Opzioni di visualizzazione	104
Filtri di stato	104
Tipo di vista	105
Raggruppamento	105
Ordinamento	105
Filtro e cerca	107
Filtro per paziente	107
Filtro per data	108
Funzionalità di ricerca avanzata	109
 Medit Link > Flusso di lavoro	
Creare/modificare/clonare/eliminare il caso	110

Creare i casi	110
Creare un caso in Case Box (Clinica)	110
Creare un caso in Work Box (Laboratorio)	111
Modificare i casi	111
Modificare un caso in Case Box (Clinica)	111
Modificare un caso in Work Box (Laboratorio)	112
Clonare i casi	113
Clonare un caso in Case Box (Clinica)	113
Clonare un caso in Work Box (Laboratorio)	113
Eliminare i casi	114
Eliminare un caso (Clinica e Laboratorio)	114
Informazioni del modulo	115
Registrazione delle informazioni del modulo in Case Box	115
Inserire nella scheda Modulo	115
Registrazione delle informazioni del modulo in Work Box	115
Inserire nella scheda Modulo	115
Collegare i denti nel ponte	115
Impostare le opzioni di scansione	116
Medit Scan for Labs	116
Opzioni generali	116
Opzioni per denti	116
Aggiungere ai preferiti	116
Aggiungere ai preferiti	117
Gestire i modelli dei preferiti	117
Lavorare su scansione/CAD	118
Processo di scansione	118
Processo CAD	118
Utilizzare le applicazioni add-in	118
Add-in Quick Launcher	118
Gestione del launcher di app	118
Quick Launcher	119
Tutte le app	119
Ottenere i file dei risultati	120
Esportare i file dei risultati di scansione	120
Esportare i file dei risultati dall'elenco dei casi	121
Esportare i file dei risultati dal visualizzatore file	124
Esportare i file dei risultati dall'albero dei dati	125
Esportare l'elenco dei casi come CSV	128
Esportare la linea di margine	129
Esportare la linea di margine come colore	129
Esportare la linea di margine come file	130
Scaricare i file da Medit Link Web	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Ordinare/gestire gli ordini	134
Ordinare i casi	134
Confermare l'ordine (In Box)	135
Annullare l'ordine (Order Box)	135
Rifiutare l'ordine (In Box)	135
Controllare i casi ordinati	135
Inserire le informazioni di spedizione (In Box)	136
Gestire la data di consegna	136

Impostare la data di consegna richiesta (account Clinica)	136
Impostare la data di consegna prevista (account Laboratorio)	137
Completare il caso	138
Completare (Work Box/In Box)	138
Completare un caso dai dettagli del caso	138
Completare i casi multipli dall'elenco dei casi	139
Completare (Case Box/Order Box)	139
Completare un caso non ordinato in Case Box	139
Comunicare utilizzando i tag	141
Aggiungere tag quando si crea un nuovo caso	141
Aggiungere tag quando si ordina	142
Controllare i tag in Dettagli del caso	142

Introduzione

Medit Link

Medit Link è uno strumento di collaborazione progettato per agevolare la comunicazione tra cliniche e laboratori, al fine di fornire un flusso di lavoro ottimizzato per ciascuna delle parti.

Offre funzionalità differenziate in base al tipo e alle autorizzazioni di ciascun account. Il programma fornisce un'interfaccia utente intuitiva per gestire il flusso di lavoro, dalla scansione con scanner orali e di modelli, all'ordinazione di casi e alla progettazione e realizzazione di protesi.

Medit Link consiste in un servizio web e un'applicazione informatica.

Panoramica del servizio

		Web	App
		• Registrazione e gestione dell'account • Ricerca e gestione dei collaboratori • Condivisione dei casi tramite Web Viewer con un link condivisibile • Accesso ai casi creati dall'app • Gestione degli ordini	• Inserimento delle informazioni del modulo • Scansione • Gestione degli ordini • Collegamento con CAD • Gestione dei pazienti
Clinica	Amministratore	È possibile cercare e gestire i collaboratori e le cliniche e condividere i casi. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	È possibile inserire le informazioni del modulo, eseguire la scansione, effettuare gli ordini e gestire i pazienti. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membro	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorio	Amministratore	È possibile cercare e gestire i collaboratori e il laboratorio e condividere i casi. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	È possibile inserire le informazioni del modulo, eseguire la scansione e gestire gli ordini. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membro	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Servizio Cloud

Medit Link supporta l'upload/download automatico di database e file tramite AWS (Amazon Web Services).

I dati archiviati nel cloud vengono sincronizzati automaticamente con i computer di più utenti dell'organizzazione, in modo che questi possano accedere agli stessi dati da qualsiasi computer in qualsiasi momento. Il backup e il ripristino basati su cloud mantengono al sicuro tutti i dati dell'utente. I dati sono al sicuro anche in caso di perdita di dati provocata da un guasto improvviso del computer.

Il servizio cloud consente ai dentisti e ai laboratori partner di condividere rapidamente i dati senza il fastidio di inviare e-mail o trasferire manualmente le scansioni. Tutti i dati, incluse le informazioni sui pazienti, vengono crittografati, archiviati e trasmessi in modo sicuro. Medit è conforme alle leggi e ai regolamenti medici come HIPAA e GDPR.

Piattaforma di gestione del flusso di lavoro con sistema di ordinazione

Medit Link offre il proprio sistema di ordinazione.

- Medit Link consente di stabilire rapporti di collaborazione tra dentisti e laboratori odontotecnici e di condividere i dati in modo rapido e semplice.
- È possibile controllare e gestire lo stato dell'ordine.

Requisiti di sistema

Nota

Fare riferimento ai requisiti di sistema per Medit Scan for Clinics e Medit Scan for Labs se si desidera utilizzare il software di scansione con lo scanner.

Requisiti di sistema per Windows

	Computer fisso e portatile
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz o superiore
RAM	16 GB o superiore
Scheda grafica	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) o superiore, o scheda video AMD equivalente
SO	Windows 10 64 Bit (non disponibile in 32 Bit) o superiore

Requisiti di sistema per macOS

	Mac
Processore	M1 con 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB o superiore
SO	Monterey 12 o superiore

Requisiti di sistema per il Web Service

Consigliati per i browser

	Browser
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimi per dispositivi mobili

	Android	iOS
Dispositivo	Equivalente o superiore a Galaxy S7	Equivalente o superiore a iPhone 7
SO	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB o superiore	2 GB o superiore
AP	Superiore a Snapdragon 710	A10 Fusion


Installazione su Windows

Medit Link viene installato come pacchetto con i programmi di acquisizione della scansione: Medit Scan for Clinics e Medit Scan for Labs.


1. Eseguire Medit_LinkSetup.exe.
2. Selezionare una lingua per l'installazione.
3. Selezionare la cartella per l'installazione di Medit Link. Leggere e accettare i termini e le condizioni della licenza, quindi cliccare su "INSTALLA".

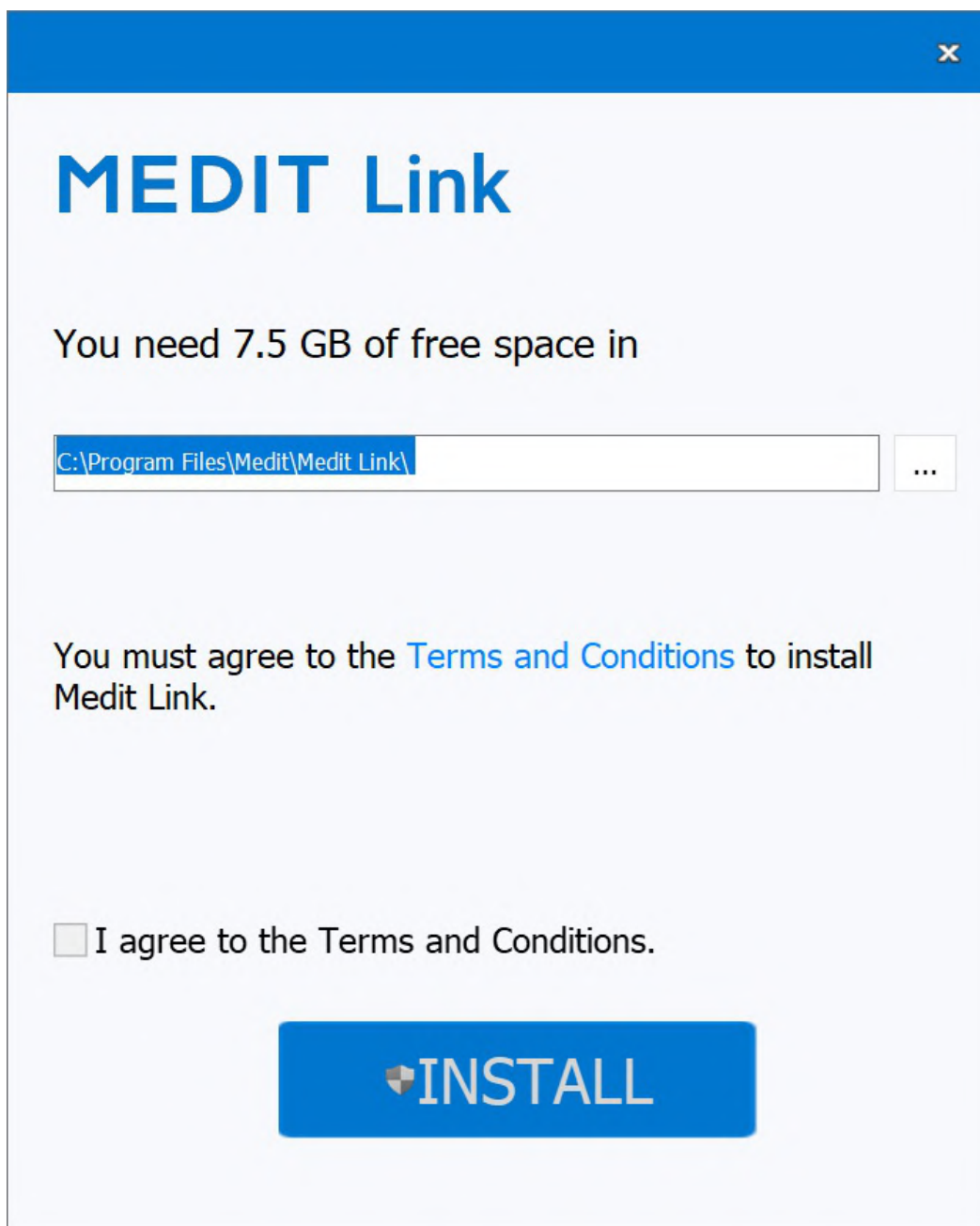

4. Assicurarsi che il cavo dello scanner sia scollegato dal computer prima di procedere al passaggio successivo. L'installazione potrebbe non avanzare se lo scanner è collegato al PC.
5. Il programma verrà installato automaticamente. Potrebbero volerci alcuni minuti. Non spegnere o scollegare il PC prima che l'installazione sia stata completata.

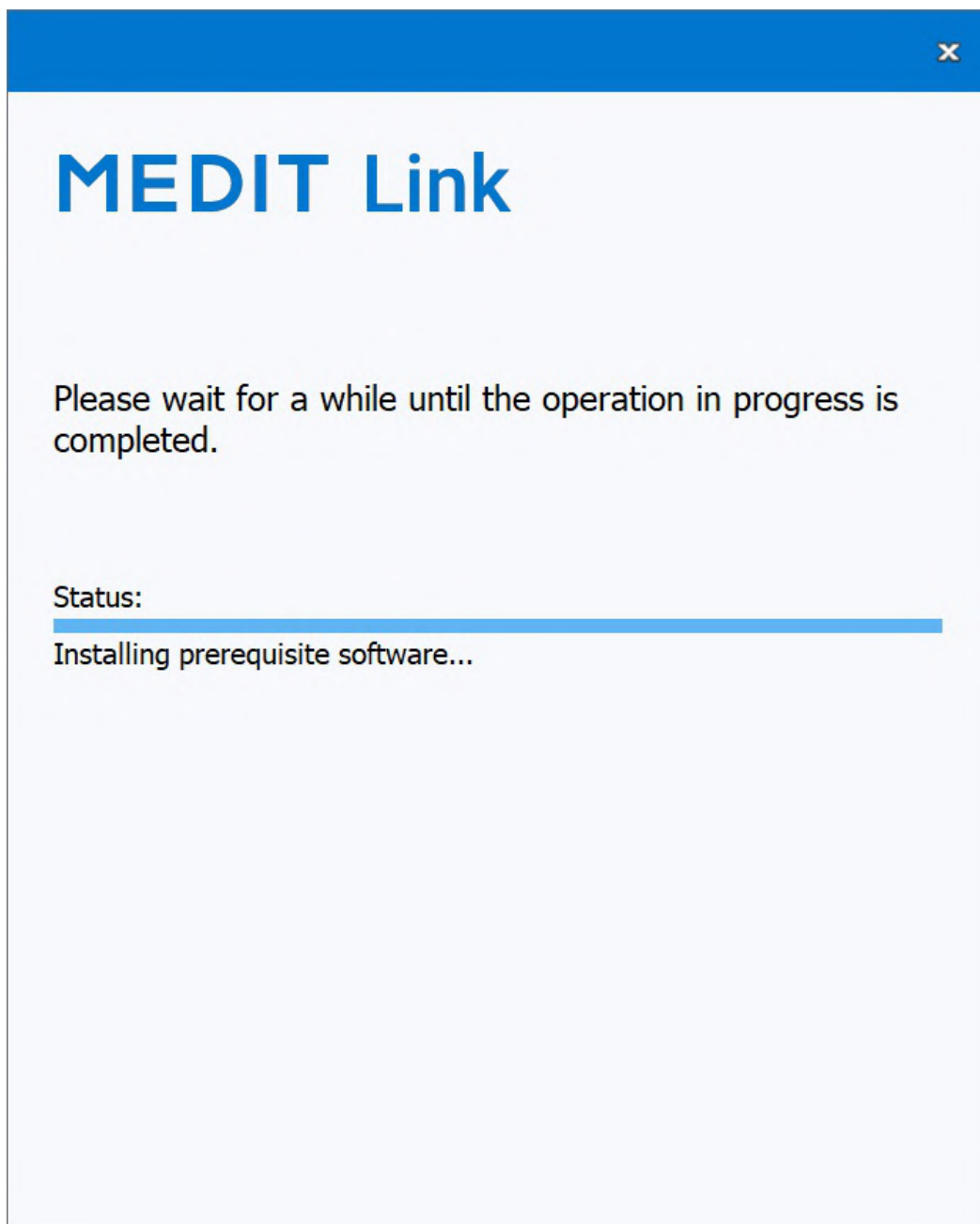

6. Una volta completata l'installazione, riavviare il PC. Se non si dispone dello scanner, è possibile procedere senza riavviare il PC.

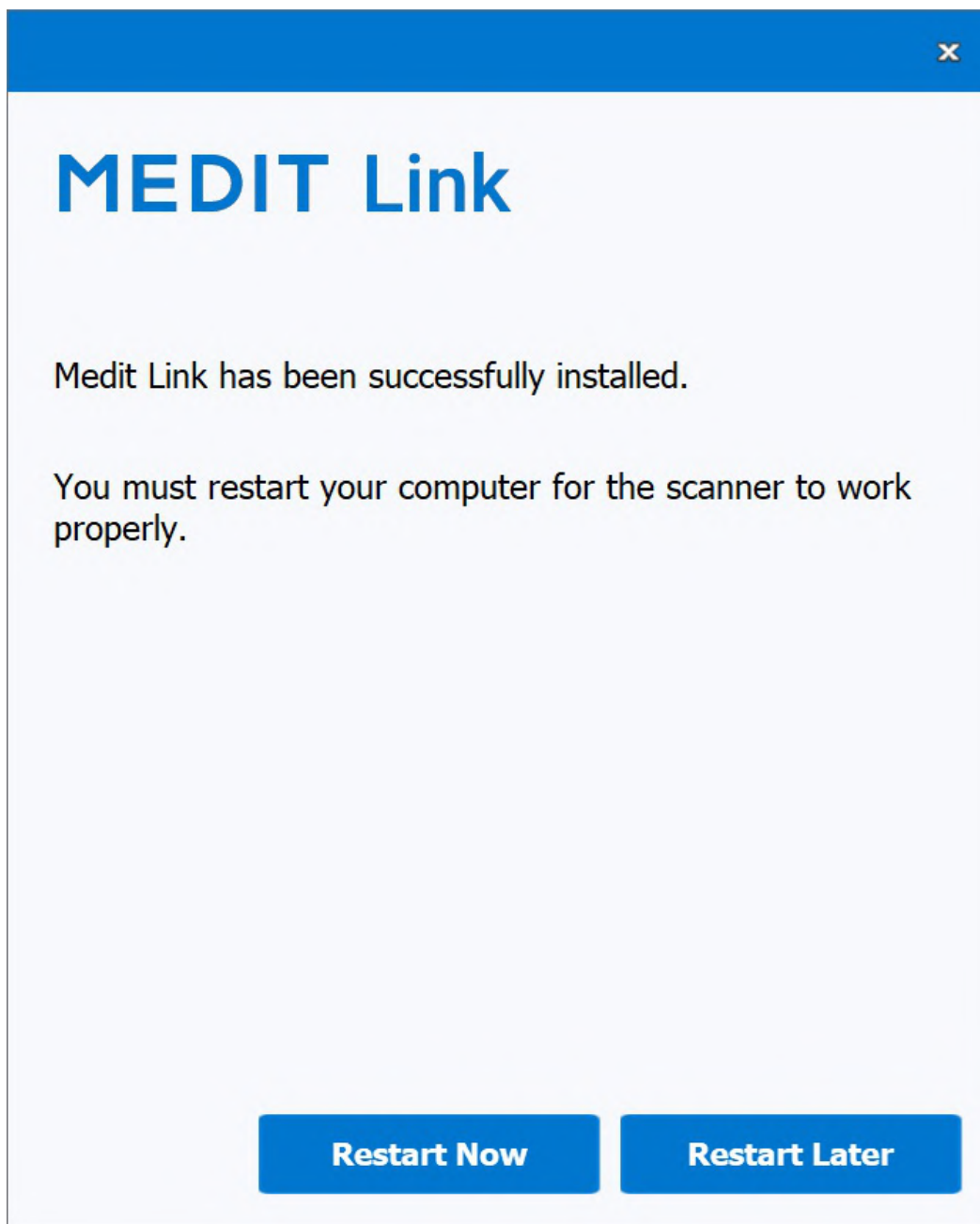


 Nota

Se non si riavvia il PC al termine dell'installazione, lo scanner potrebbe non funzionare correttamente.


Installazione su macOS

Medit Link viene installato come pacchetto con Medit Scan for Clinics.


1. Eseguire Medit_Link_x.x.x.pkg e cliccare su "Continua".

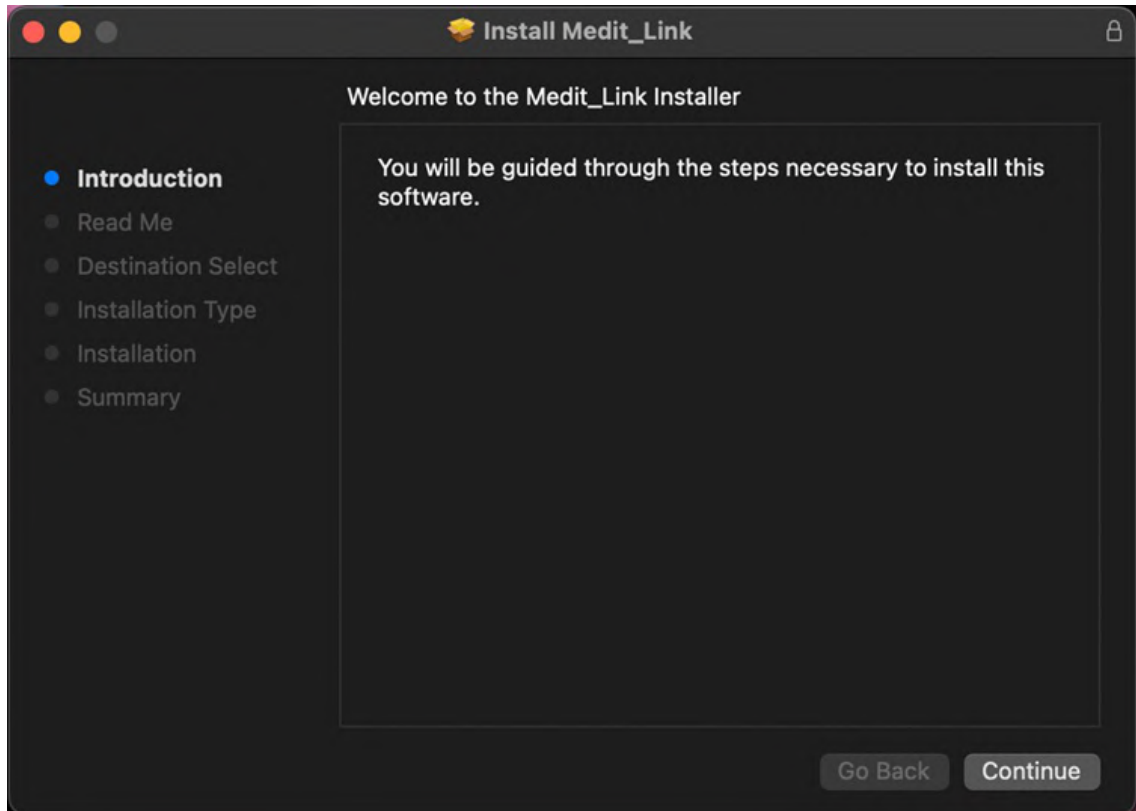


2. Leggere il Contratto di licenza per l'utente finale e cliccare su "Continua".

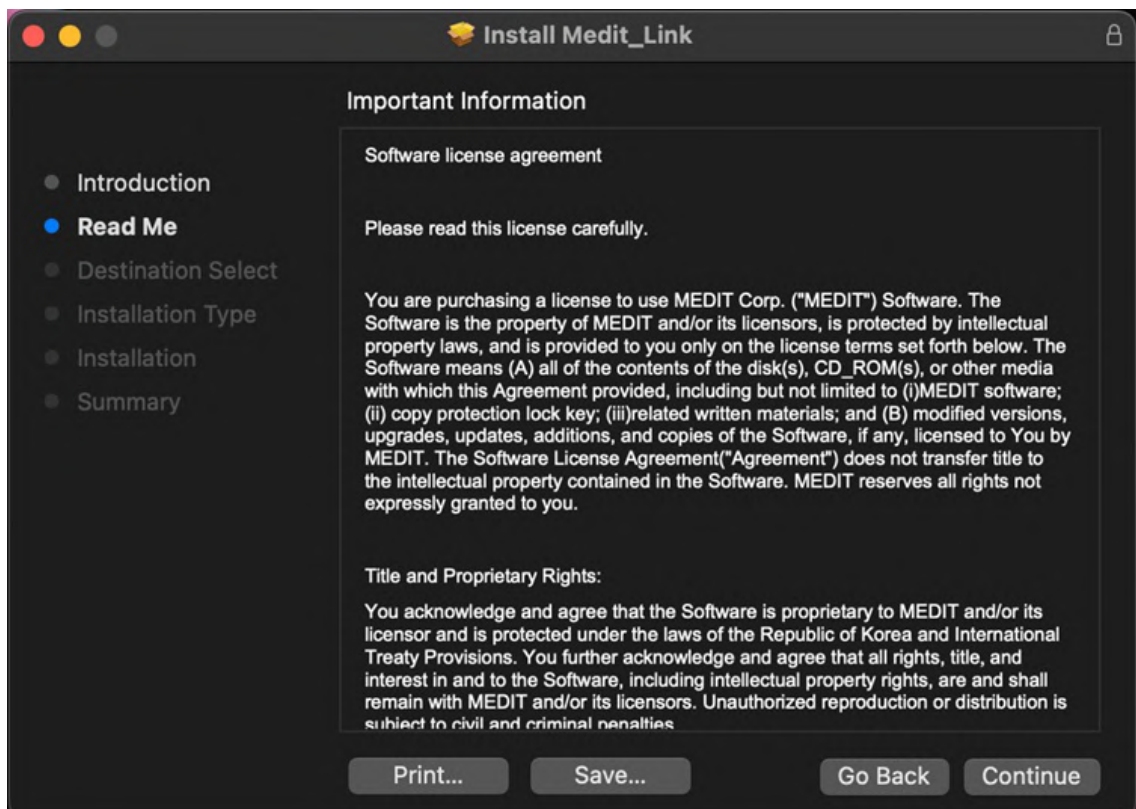


3. Selezionare il disco d'installazione e cliccare su "Continua".

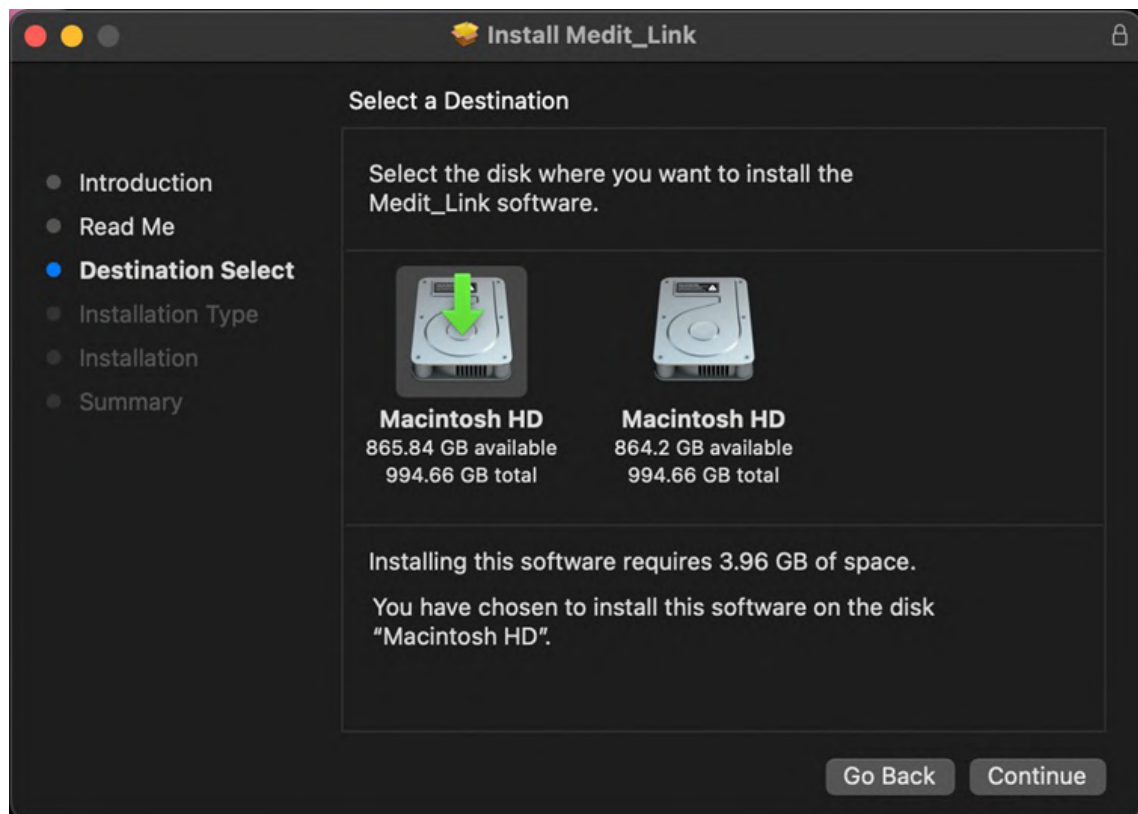


4. Cliccare su "Cambia percorso di installazione..." per cambiare la destinazione dell'installazione.

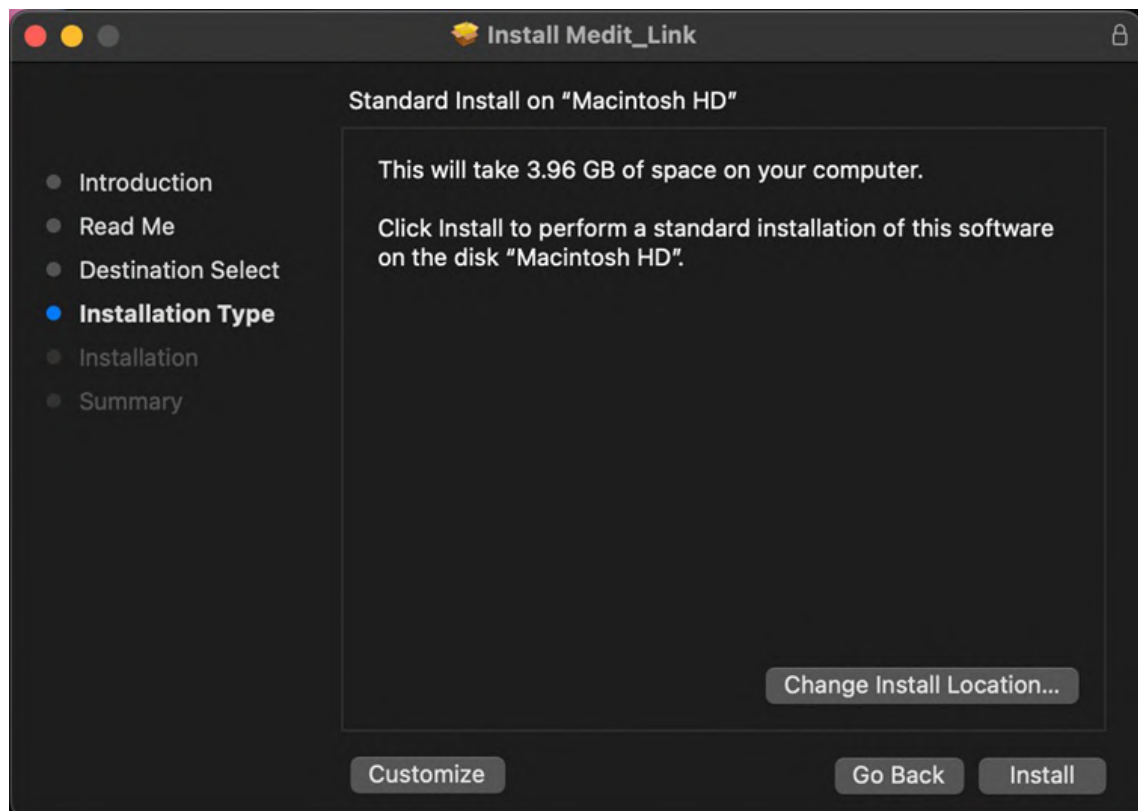


5. Cliccare su "Installa" e, se richiesto, digitare la password del proprio Mac per autorizzare l'installazione.

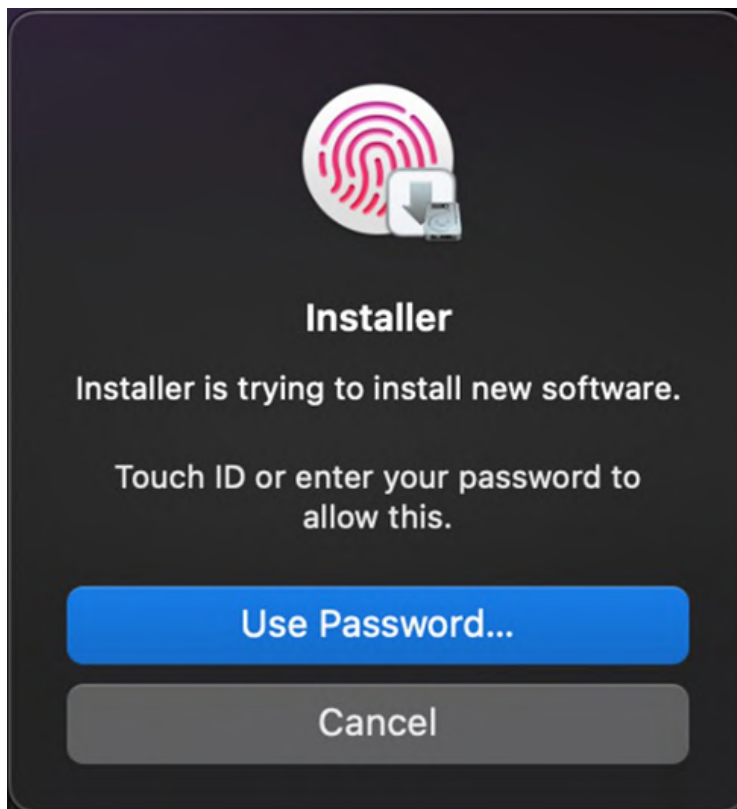

6. Attendere il completamento dell'installazione.

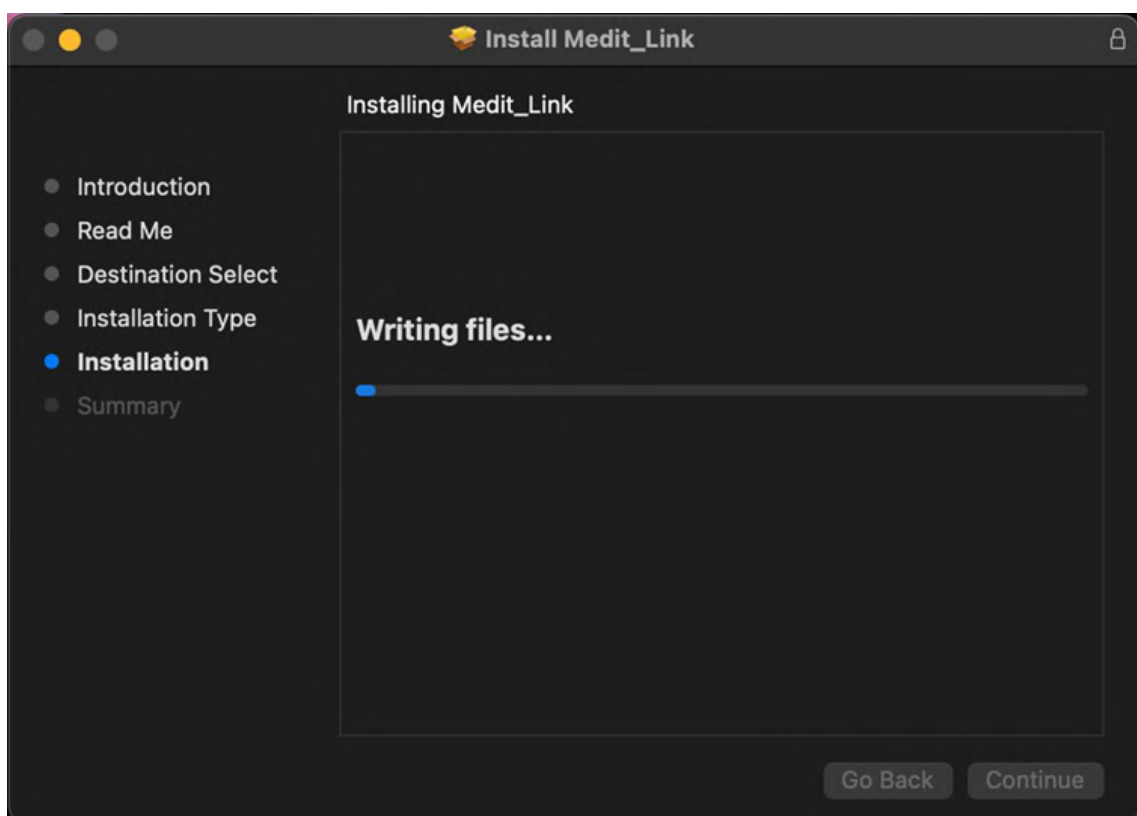


7. Cliccare su "Chiudi" per uscire dalla finestra di installazione.

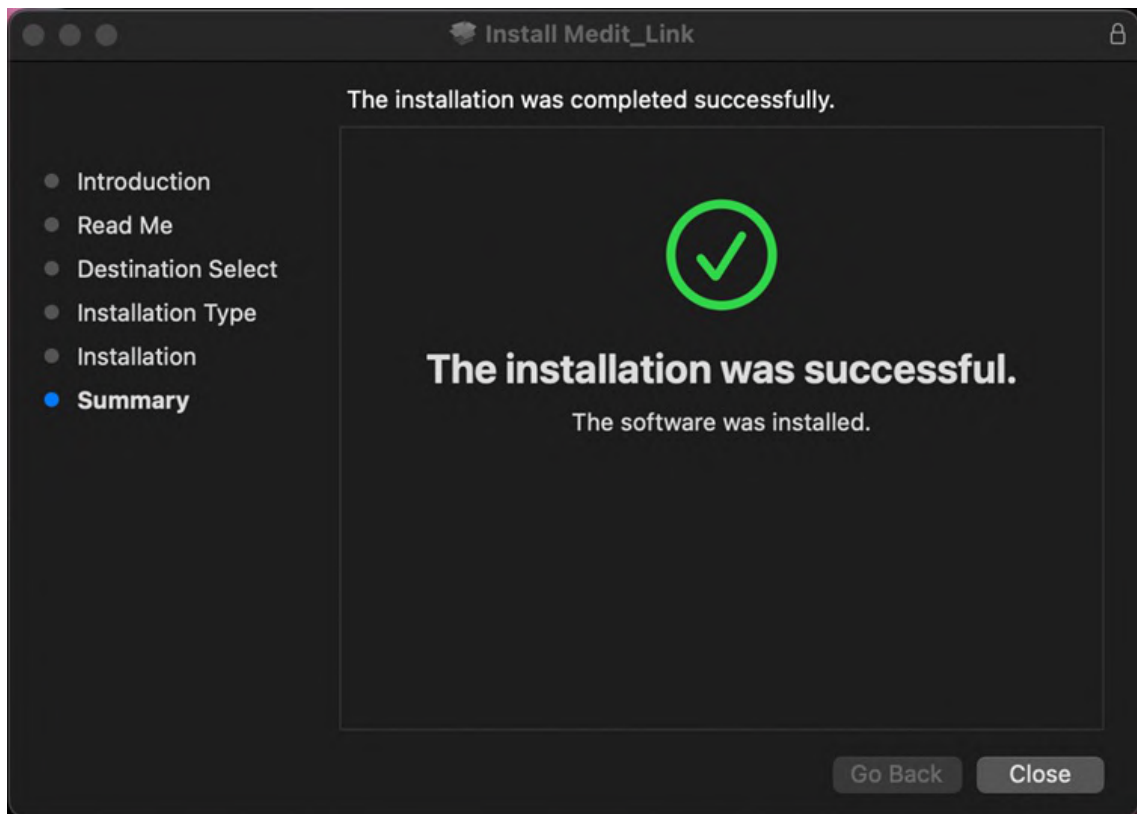

Registrati e accedi

Sito web Medit Link

Registrati al servizio Medit Link su www.meditlink.com.

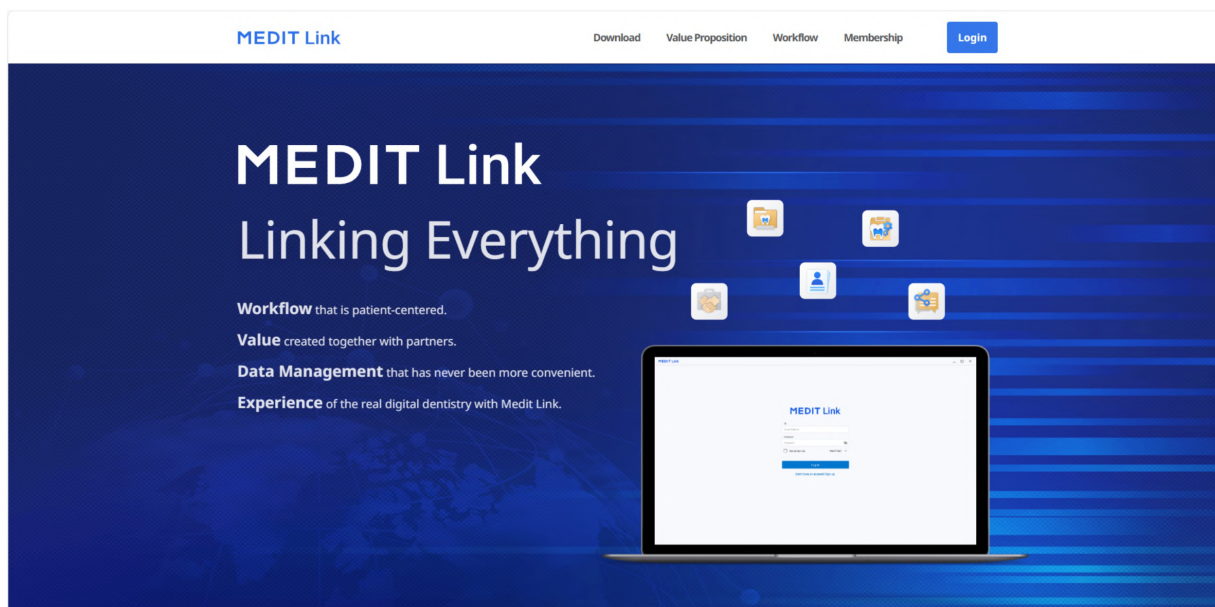

Registrati a Medit Link China su www.meditlink.cn.

Registrati

Per utilizzare il servizio Medit Link è necessario registrare un account. È possibile utilizzare le funzionalità presenti in Medit Link dopo aver creato un account come clinica o laboratorio.

Gli utenti possono scegliere uno di questi quattro tipi di account per registrarsi e utilizzare il servizio con funzionalità e privilegi completi o limitati, a seconda della tipologia di account.

- Clinica - Amministratore
- Clinica - Membro
- Laboratorio - Amministratore
- Laboratorio - Membro

Di norma, l'amministratore è un rappresentante dell'organizzazione dell'utente e avrà pieno accesso a tutte le funzioni e servizi offerti da Medit Link. Al contrario, l'account membro ha un accesso limitato.

Per registrarsi, seguire questi passaggi:

1. Cliccare su "Non hai ancora un account? Registrati" sulla pagina di login.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Dopo aver letto le descrizioni fornite, cliccare sul pulsante "Registrati" per la tipologia di account desiderato.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

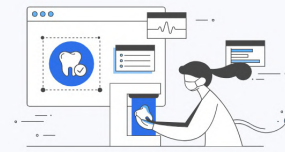

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Viene visualizzato il seguente modulo di registrazione.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

- Inserire il nome della clinica o del laboratorio. Successivamente, a seconda della tipologia di account desiderato, procedere come segue:
 - Se ci si sta registrando amministratore, cliccare su "Verifica disponibilità" per vedere se il nome inserito è disponibile.
 - Se ci si sta registrando come membro, cliccare su "Cerca". L'amministratore deve registrare l'organizzazione prima che l'utente si registri.
- Compilare il resto del modulo di registrazione e cliccare su "Registrati".

Nota

Se si accetta di ricevere informazioni di marketing in fase di registrazione, si riceveranno informazioni utili sul prodotto e il servizio da Medit.

- Verrà inviata un'e-mail di verifica alla propria casella di posta elettronica.
- Per completare la procedura di registrazione, verificare il proprio indirizzo e-mail utilizzando il link ricevuto.

Login e pagina di benvenuto

- Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password nella pagina di login e cliccare su "Login".

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Se non sono state inserite le informazioni sull'attività, verrà visualizzato il seguente messaggio pop-up.

Welcome, stage-test-wh!

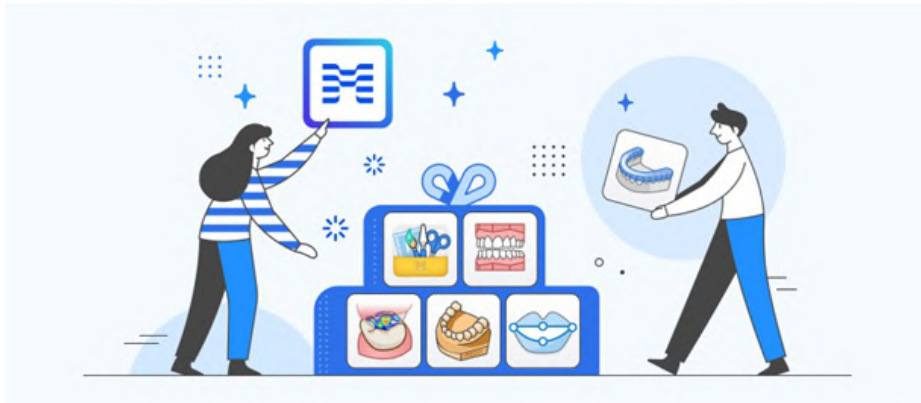

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.


[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Nota

Per utilizzare i servizi di Medit Link, devono essere inserite le informazioni sulla clinica o sul laboratorio utilizzando l'account amministratore.

3. Cliccare sul pulsante "Vai alla mia clinica" o "Vai al mio laboratorio" e inserire le informazioni sulla clinica o sul laboratorio, tra cui il nome dell'attività, le immagini di copertina/logo, i servizi offerti, l'indirizzo e il numero della sede, ecc.
4. Le informazioni inserite nella pagina di benvenuto possono essere modificate in qualsiasi momento nella scheda My Info > La mia clinica o Il mio laboratorio in Medit Link Web.

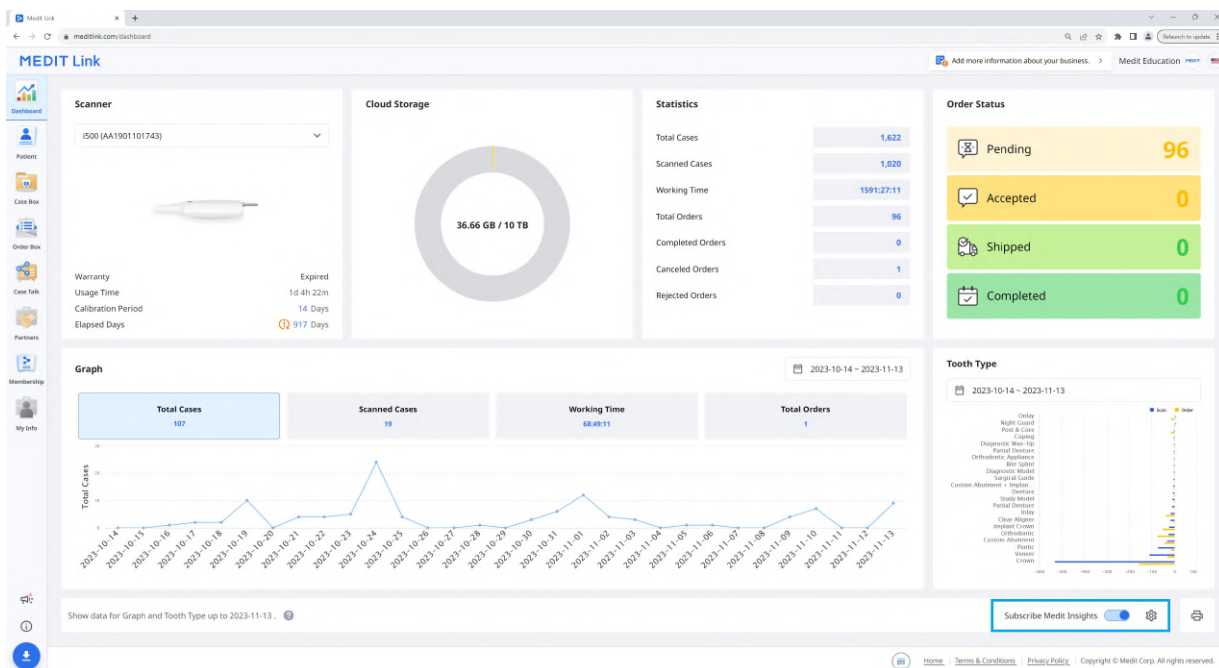

Iscrizione a Medit Insights

È possibile ricevere un'e-mail di rapporto il secondo giorno di ogni mese. Non è richiesta alcuna ulteriore procedura di registrazione. È sufficiente abilitare l'opzione "Iscriviti a Medit Insights".

Se non si utilizza l'indirizzo e-mail usato per l'account Medit Link, è possibile impostare un altro indirizzo e-mail per ricevere Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Il secondo giorno di ogni mese, l'utente riceverà un'e-mail con le statistiche, come mostrato di seguito.

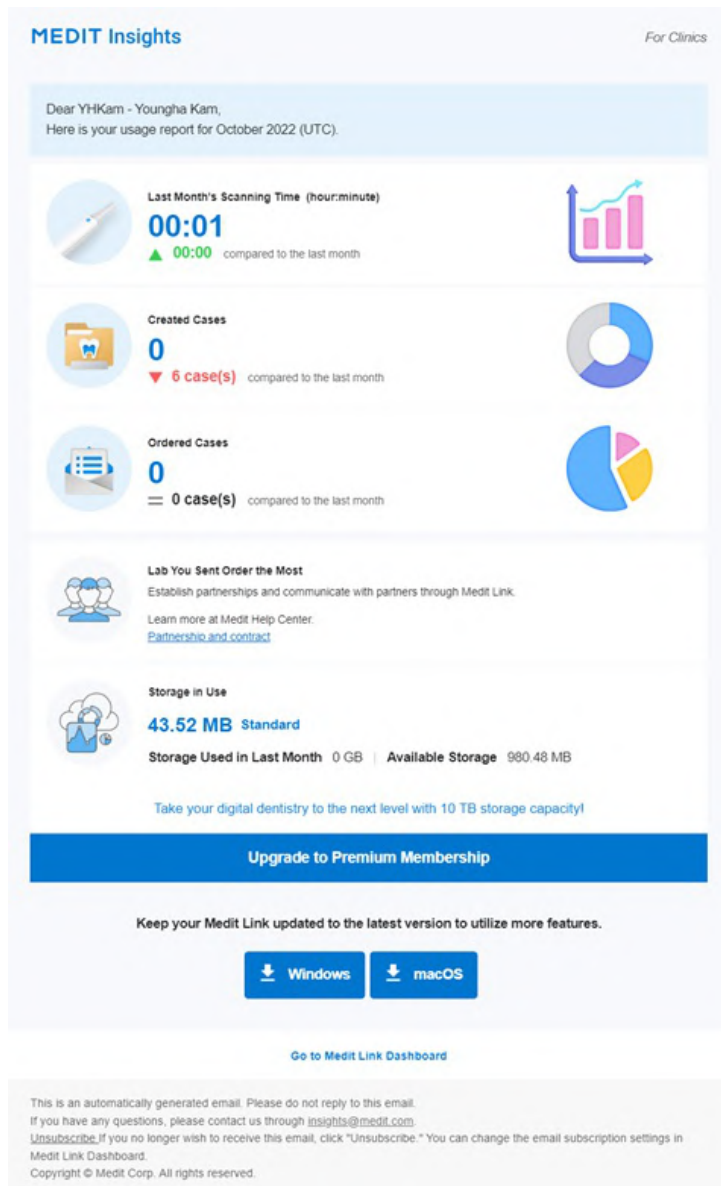

Banner	Medit fornisce suggerimenti e informazioni utili qui. * Se non si desidera visualizzare il banner, deselezionare la casella di controllo Accordo di marketing e promozione ne Le mie informazioni > Il mio account.
Informazioni statistiche	Vengono mostrate informazioni statistiche come il tempo di scansione, i casi creati, il laboratorio a cui sono stati commissionati più ordini, ecc.
Scarica Medit Link	Questo pulsante fornisce il link per scaricare Medit Link.
Dashboard	Tutte le informazioni statistiche si basano sulle informazioni della Dashboard. Maggiori dettagli sono disponibili nella Dashboard.

Annullare l'iscrizione a Medit Insights

Disabilitare l'opzione "Iscriviti a Medit Insights" nella Dashboard o cliccare su "Annulla iscrizione" nell'e-mail ricevuta.

Patient

È possibile gestire i casi in base al nome e all'ID del paziente.

Tutti i pazienti registrati attraverso l'applicazione Medit Link vengono visualizzati in un elenco, agevolando la gestione dei pazienti e dei rispettivi casi.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04		1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 덴티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Ricerca del paziente

1. Selezionare il criterio di ricerca tra Nome del paziente e ID del paziente dal menu a discesa in alto a destra dell'elenco dei pazienti.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Inserire il nome del paziente o l'ID del paziente da ricercare in base ai criteri di ricerca selezionati.
3. Nell'elenco vengono mostrati solo i pazienti con il nome o l'ID del paziente inserito.

Case Box/Work Box

Case Box (Clinica) o Work Box (Laboratorio) mostrano tutti i casi creati dall'utente sull'applicazione Medit Link. È possibile visualizzare i file tramite browser web senza installare un programma separato.

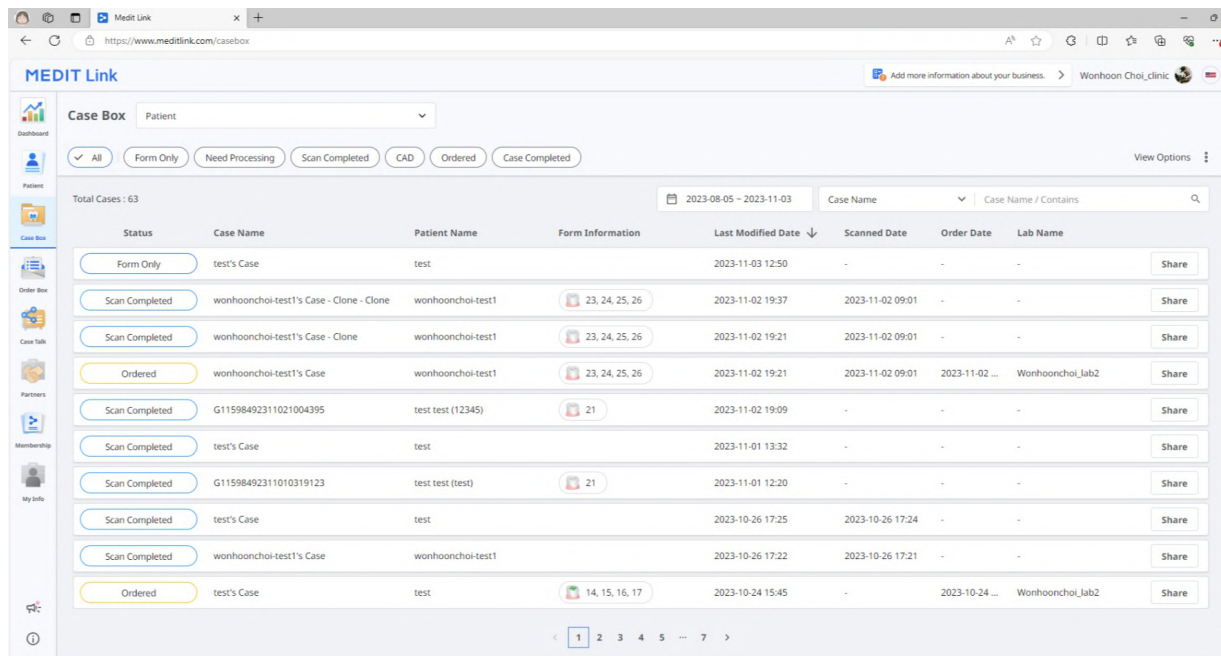


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is also present. The table below shows a list of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table is paginated, showing 1 to 7 items.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Filtraggio dei casi

Filtro per paziente

È possibile filtrare i casi per paziente. È utile per cercare casi di pazienti specifici.

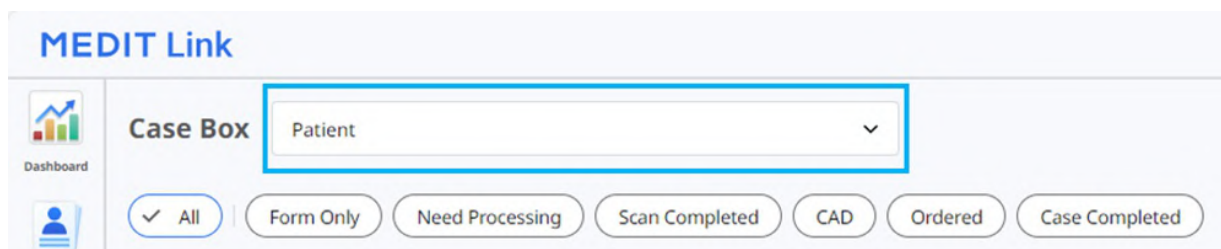

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Inserire il nome del paziente nel campo di ricerca.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Selezionare un paziente dall'elenco dei risultati di ricerca.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -+ 2 ^

test⊗

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. Nell'elenco vengono mostrati solo i casi dei pazienti selezionati, in modo da facilitare la ricerca dei casi su cui si desidera lavorare.

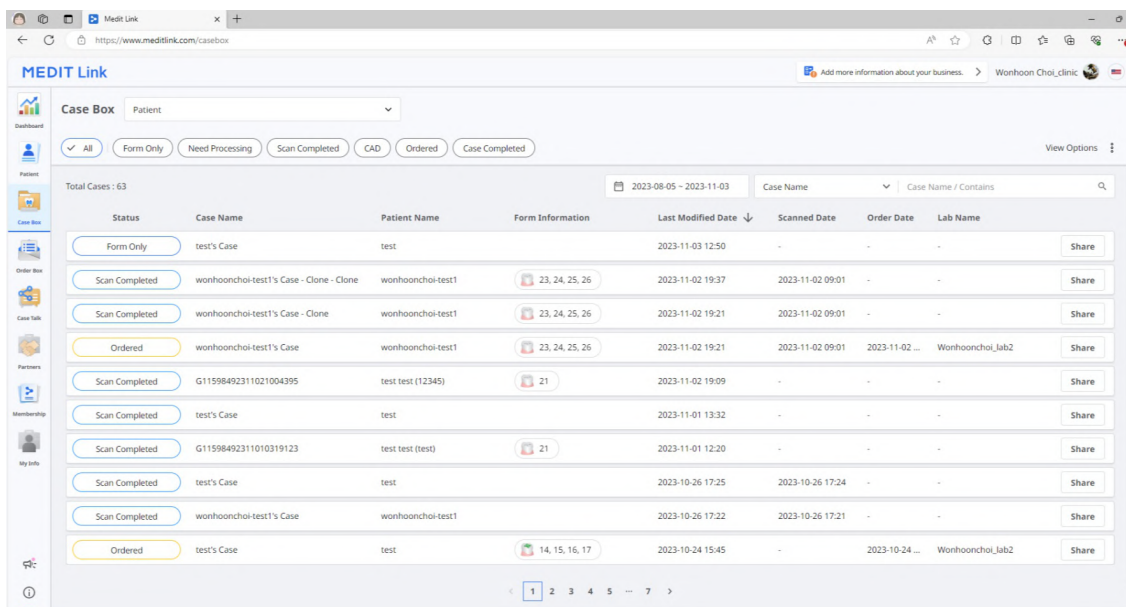

Filtro per stato

È possibile filtrare i casi in base al loro stato.

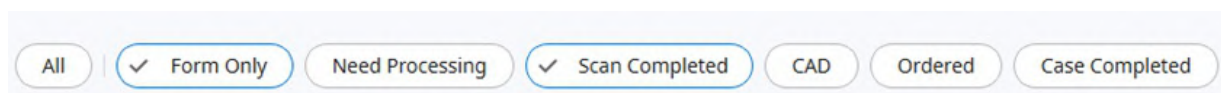

- L'utente può cliccare sullo stato che desidera visualizzare. Il browser mostrerà soltanto i casi con lo stato scelto.
- L'utente può selezionare più stati contemporaneamente.

In base al tipo di account vengono fornite le seguenti tipologie di stato:

Case Box (Clinica)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratorio)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtro per durata

È possibile filtrare e visualizzare i casi la cui ultima modifica è stata apportata entro il periodo stabilito.

1. Cliccare sul filtro durata.



2. Selezionare l'intervallo.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Tutto: mostra tutti i casi.
- Intervallo personalizzato: consente di specificare le date di inizio e fine per visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro quell'intervallo di tempo.
- Oggi: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata il giorno corrente.
- Ieri: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata il giorno prima.
- Ultimi 7 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata negli ultimi 7 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 30 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata durante gli ultimi 30 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 90 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata durante gli ultimi 90 giorni, escluso il giorno corrente.
- Questo mese: mostra i casi del mese corrente.
- Mese precedente: mostra i casi del mese precedente.

L'elenco dei casi verrà aggiornato in tempo reale con i casi creati o modificati per l'ultima volta entro la durata selezionata.

Filtro per ricerca

È possibile sfruttare le funzionalità di ricerca per cercare le informazioni desiderate in modo semplice e veloce.


Case Name

Case Name / Contains

In base al tipo di account vengono fornite le seguenti opzioni di ricerca:

Case Box (Clinica)	Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Nome del laboratorio
Work Box (Laboratorio)	Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, ID dell'ordine

Dettagli del caso

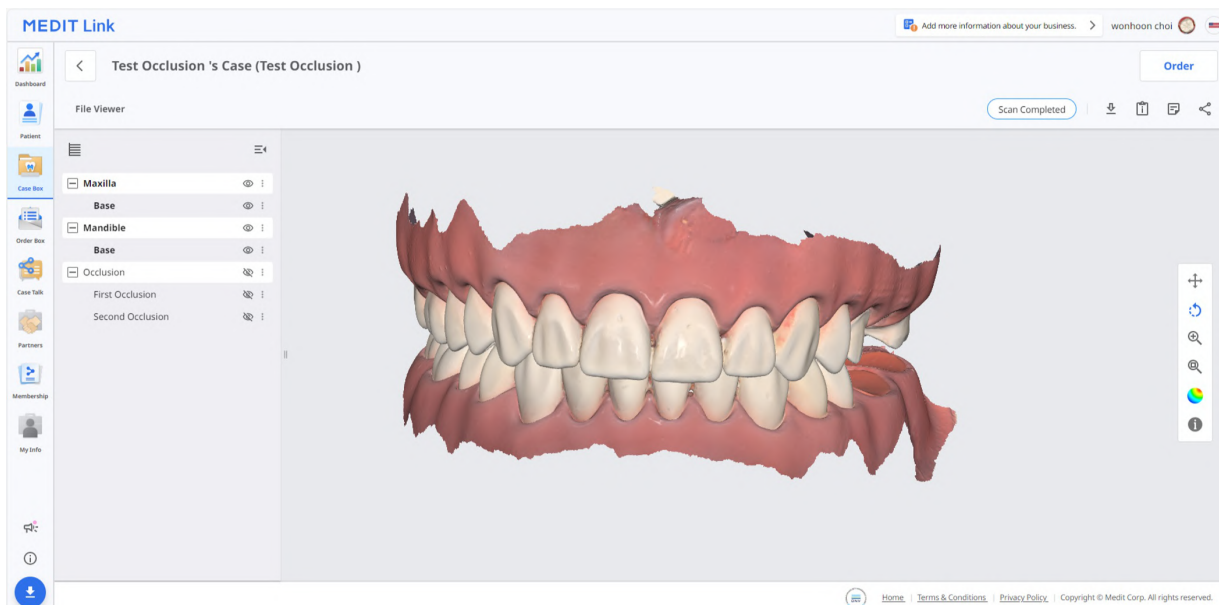

In Case Box/Work Box sono disponibili i seguenti strumenti di gestione dei casi.

	Stato del caso	Mostra lo stato del caso.
	Vai a Order Box/In Box	Fornisce una scorciatoia per lo stesso caso in un'altra box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Download	Consente di scaricare i file presenti nel caso sul PC locale.
	Informazioni sul caso	Consente di rivedere i dettagli del caso e salvarli come PDF o stamparli.
	Promemoria e Tag	Consente di aggiungere un promemoria o dei tag quando si registra o si ordina un caso. Utilizzare queste funzioni per comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva o supplementare sul caso ai collaboratori.
	Condividi	Crea un link per la condivisione. Gli utenti in possesso del link condiviso possono accedere ai dati 3D in un browser come Chrome, Firefox o Safari senza dover installare programmi aggiuntivi.

Order Box/In Box

Order Box (Clinica) o In Box (Laboratorio) mostrano i casi ordinati sull'applicazione Medit Link.

Dettagli ordine

- | | |
|---|--|
| 1 | Mostra il nome del caso e il nome del paziente. |
| 2 | Fornisce funzioni per la gestione degli ordini (accettazione/cancellazione; consegna/ricezione). |
| 3 | Mostra le schede disponibili: Ordine, Visualizzatore file |
| 4 | Mostra le funzioni per la gestione di casi e file: stato del caso, comandi rapidi per informazioni dettagliate, informazioni sul caso, promemoria & tag, ecc. |
| 5 | Mostra informazioni dettagliate relative all'ordine, come il numero dell'ordine, il nome del paziente, il nome del collaboratore, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna e promemoria & tag. |
| 6 | Mostra informazioni sul prodotto ordinato e sullo stato della consegna. |


Schede in Order Box/In Box

Ordine	Visualizzatore file
Consente di visualizzare informazioni dettagliate relative all'ordine, come l'ID dell'ordine, il nome del paziente, il nome dell'account, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna, promemoria e tag.	Consente di visualizzare i file generati dalle operazioni di scansione/CAD. Il visualizzatore file mostra e gestisce le immagini 2D e i modelli 3D acquisiti o allegati.

Case Talk

I casi creati in Medit Link possono essere condivisi con persone specifiche stabilite dall'utente, chiunque abbia il link condiviso o iscritti di Medit Link.

L'utente può visualizzare un elenco di tutti i casi condivisi tramite "Case Talk" in Medit Link App e Medit Link Web.

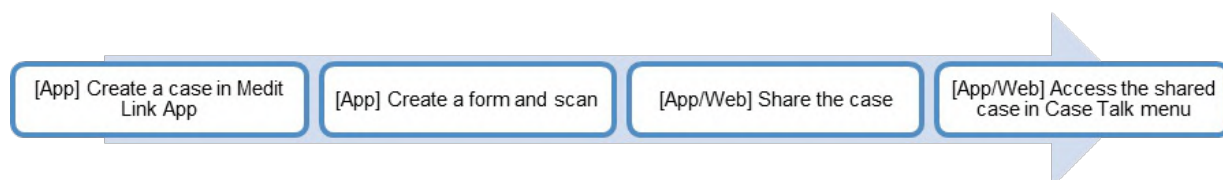


I casi condivisi possono essere visualizzati tramite browser web senza installare un programma a parte, consentendo una comunicazione semplice sui dati 3D su vari dispositivi.


Creazione di un Case Talk

È possibile creare un link condiviso a un caso creato in Case Box/Work Box.

1. Cercare un caso che si desidera condividere e cliccare sul pulsante "Condividi" a destra.

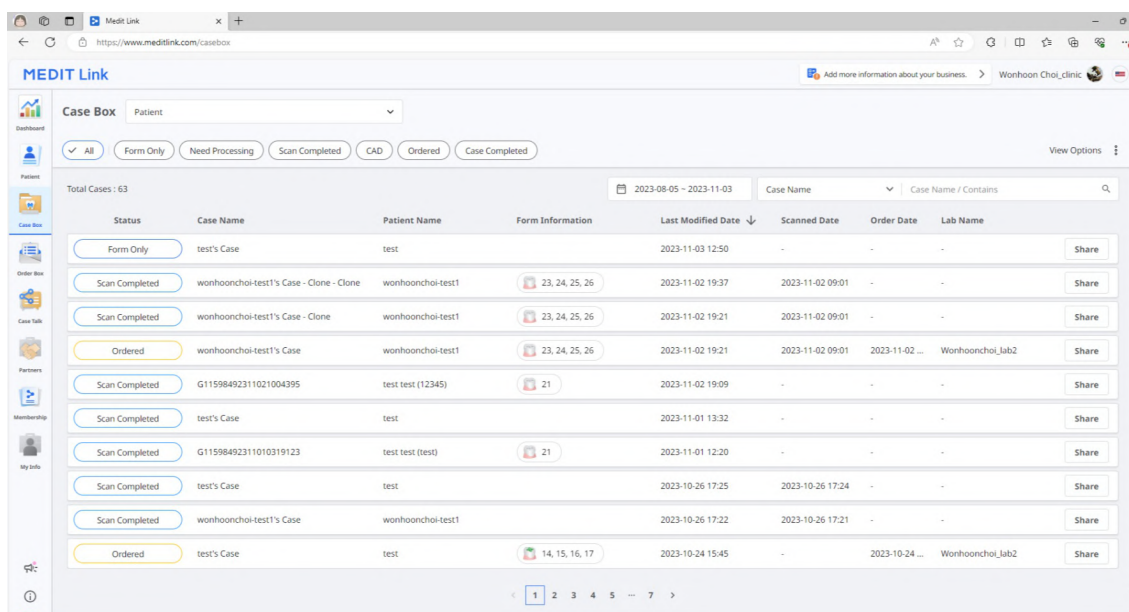

2. Selezionare i file che si desidera condividere.

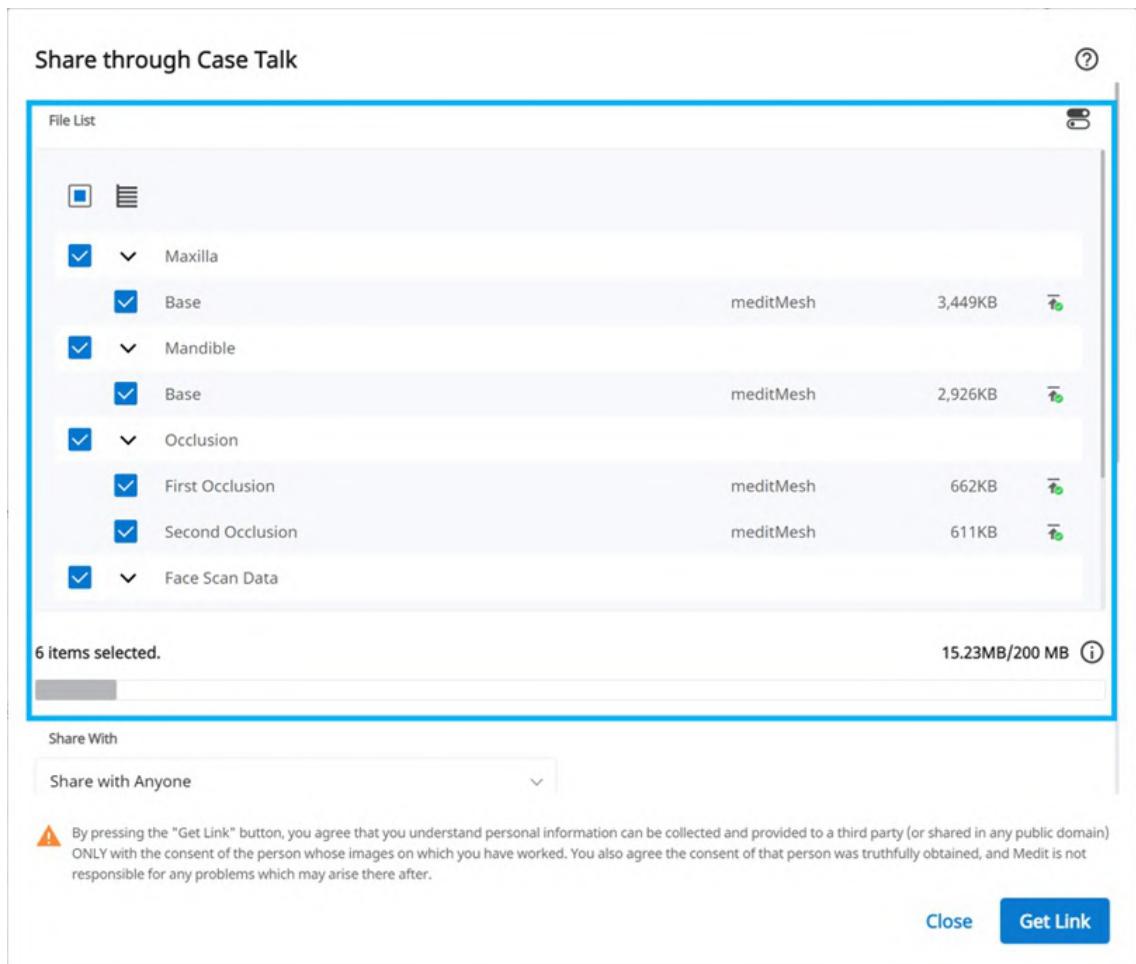

3. Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione.
4. Cliccare su "Ottieni il link" per creare un link condiviso.

Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

✉

+

☰

❗ Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

📅 2022-06-28

❗ You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

❗ Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

❗ If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

❗ The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

❗ If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠️ By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Condividi con	• Condividi con chiunque Crea un link condiviso. È possibile condividere i file con chiunque. • Condividi con persone specifiche Crea e invia un link condiviso a persone specifiche.
Condividi tramite	Selezionando “Condividi con persone specifiche”, è possibile condividere il link con persone specifiche in vari modi. • Indirizzo e-mail • SMS • Partners
Data di scadenza	Consente di impostare la data di scadenza del link. Una volta scaduto il link, le persone con cui è stato condiviso non potranno più accedere ai file. È possibile prolungare il periodo di scadenza fino a 90 giorni dalla data corrente.
Codice PIN	Consente di impostare un codice d'accesso a 6 cifre per garantire la sicurezza dei dati.
Condividi il nome del paziente	Selezionando questa opzione, tutte le persone in possesso del link vedranno il nome del paziente.
Concedi autorizzazione al download	Selezionando questa opzione, tutti gli utenti in possesso del link potranno scaricare i file.
Autorizza i commenti	• Selezionando questa opzione, sarà possibile comunicare attraverso il link condiviso. • Deselezionando l'opzione, il destinatario potrà solo visualizzare i commenti ma non potrà aggiungerne.
Commento	È possibile lasciare un messaggio nella sezione commenti.

Dettagli Case Talk

È possibile visualizzare i file nel caso condiviso. Nella pagina dei dettagli Case Talk sono disponibili le seguenti funzioni.

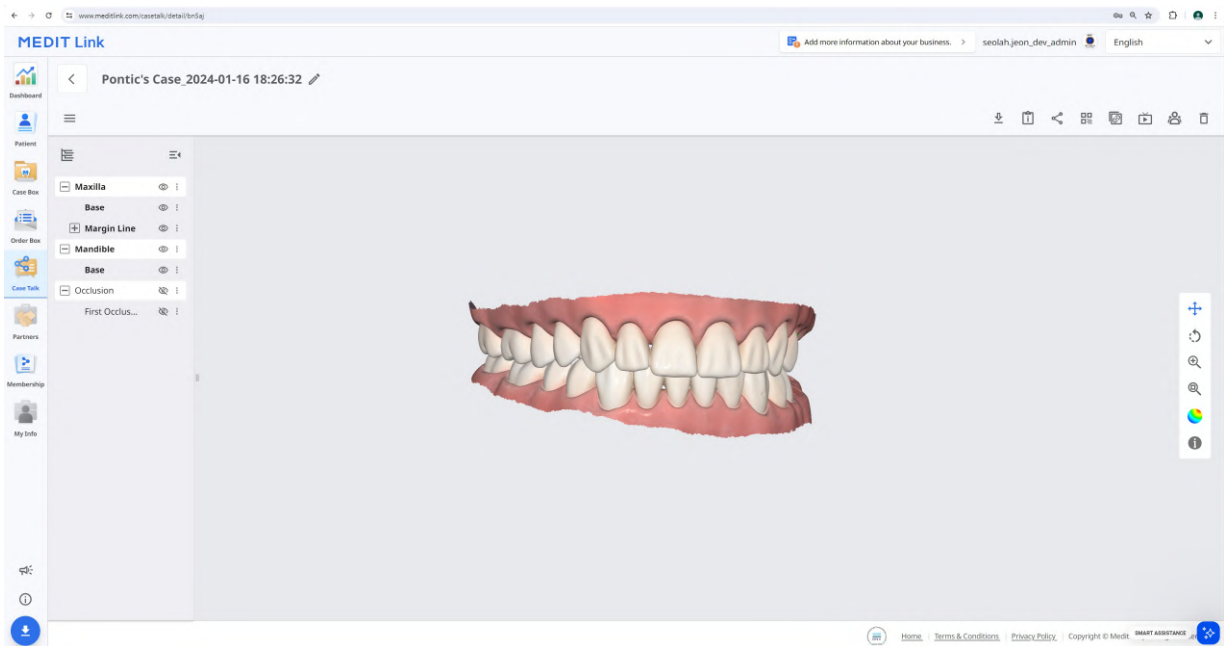

	Download	Consente di scaricare tutti i file presenti nel caso sul PC locale.
	Informazioni sul caso	Mostra le informazioni dettagliate relative al caso.
	Condividi	Modifica le impostazioni di condivisione.
	Codice QR	Condividi il caso con un codice QR.
	Copia link	Consente di copiare il link condiviso negli appunti. Il link copiato mostra i file condivisi sul browser web dell'utente.
	Live	Consente di condividere la propria schermata con gli utenti connessi. La condivisione della schermata è sincronizzata con gli utenti connessi.
	Partecipanti	Mostra tutti gli utenti che accedono al link condiviso.
	Elimina	Elimina il link condiviso. Il link condiviso eliminato non è più accessibile.

Nota


I seguenti servizi non sono disponibili per Medit Link China.

- Live
- Partecipanti

Web Viewer

È possibile visualizzare i dati condivisi tramite Case Talk in un browser web.

È inoltre possibile comunicare con le persone che hanno accesso al link utilizzando le note e i commenti.

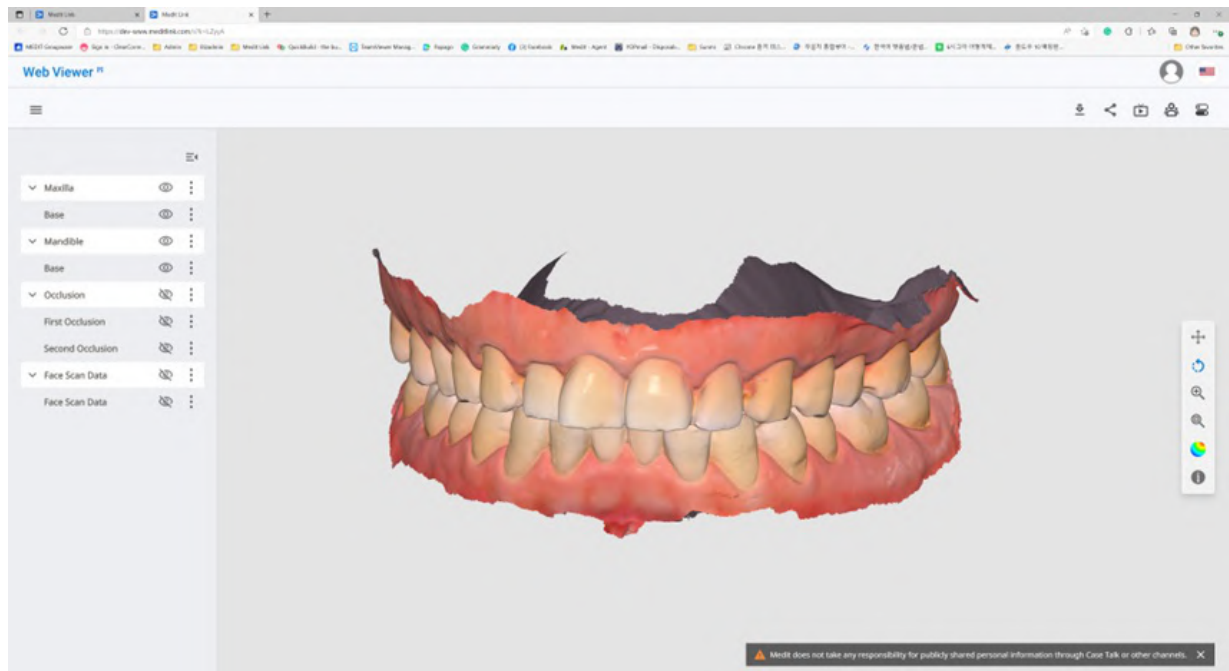

	Download	Eseguire il download sul PC di tutti i file contenuti in questo caso.
	Informazioni sul caso	Mostra le informazioni dettagliate relative al caso.
	Condividi	Consente di modificare le impostazioni di condivisione.
	Codice QR	Condividi il caso con un codice QR.
	Live	Consente di condividere la propria schermata con gli utenti connessi. La condivisione della schermata è sincronizzata con gli utenti connessi.
	Partecipanti	Mostra tutti gli utenti connessi al link condiviso.
	Etichettatura del dente	Consente di cambiare il sistema di etichettatura dei denti.


Nota

I seguenti servizi non sono disponibili per Medit Link China.

- Live
- Partecipanti

Note

È possibile aggiungere note in una posizione specifica sul modello 3D. Chiunque abbia il link può visualizzare le note.

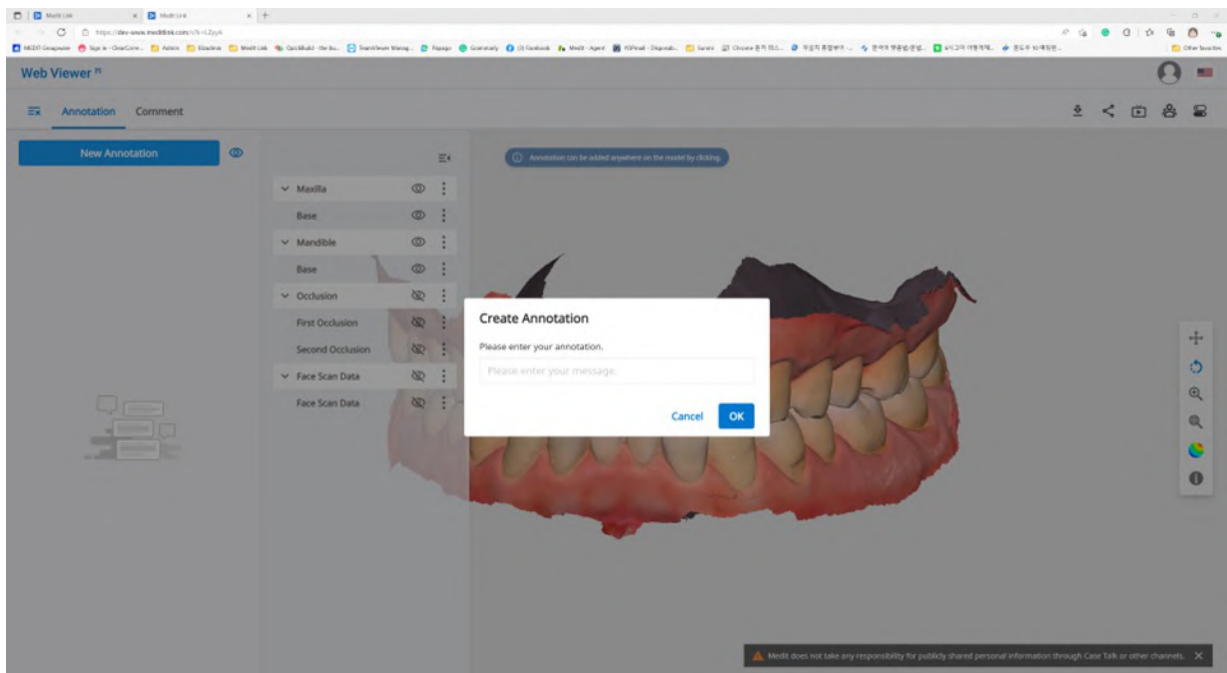

Nota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Note

1. Cercare l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra e selezionare la scheda "Note". Utilizzare il pulsante "Nuova nota" per aggiungere una nota in qualsiasi punto dei dati con un clic.
2. Digitare il messaggio, quindi cliccare su "OK" per salvarlo.

A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. È possibile utilizzare le note come semplice canale di comunicazione. Cliccare sulla nota creata per inserire una risposta, quindi premere "Invia".

A screenshot of the interface for replying to an annotation. At the top, it shows the user's name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below is the annotation title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Commenti

È possibile comunicare con gli utenti che hanno accesso al link tramite la scheda "Commento" nel menu del Web Viewer.

Nota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Commento

Condivisione della schermata in tempo reale

È possibile condividere la schermata in tempo reale.

Nota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Live

1. Cliccare su "Live" per condividere la schermata del Web Viewer con gli utenti connessi.




2. Cliccare su "OK" per avviare la condivisione della schermata.
3. È necessario che gli altri utenti che hanno effettuato l'accesso al link accettino la condivisione della schermata.
4. La schermata dell'utente che ha avviato la condivisione viene mostrata in sincronia con quella della persona che ha ricevuto la richiesta.


Albero dei dati

Tutti i dati sono raggruppati e visualizzati in base agli attributi nell'albero dei dati. È possibile mostrare o nascondere i dati, regolare l'opacità, ecc.

Controlli dell'albero dei dati

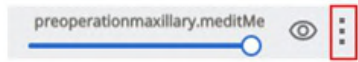Mostra/Nascondi	Fare clic sull'icona a forma di "occhio" per scegliere se mostrare o nascondere i dati. È possibile controllare la visibilità dei dati come gruppo o singolo file.
Opacità	Passare il mouse su un elemento visibile per visualizzare la barra di scorrimento dell'opacità. Regolare il cursore per modificare la trasparenza dei dati. 
Menu esteso	Il menu esteso si trova sul lato destro di ciascun elemento dell'albero dei dati. Include le seguenti opzioni:  • Mostra solo questo: nasconde tutti gli altri dati tranne quelli correnti. • Nascondi: nasconde i dati correnti.

Controlli del modello 3D

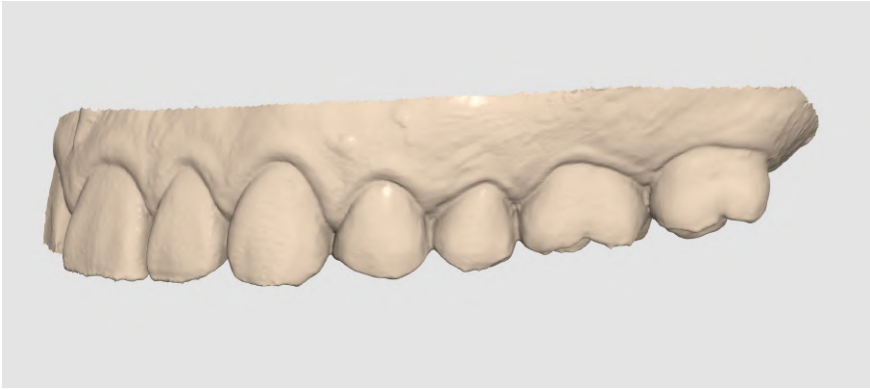◦	Panoramica	Muove il modello.
◦	Ruota	Ruota il modello.
⌕	Ingrandisci/riduci lo zoom	Ingrandisce o riduce lo zoom sul modello.
⌕	Adatta lo zoom	Posiziona il modello al centro della schermata.
•	Modalità di visualizzazione dei dati	Consente di visualizzare i dati a colori con finitura opaca (rendering Phong). 
•		Consente di visualizzare i dati in un solo colore. 

Partners

È possibile cercare potenziali collaboratori a cui richiedere una collaborazione e visualizzare l'elenco dei collaboratori attuali.




I servizi che utilizzano Google Maps non sono disponibili su Medit Link China.

Cerca collaboratori


È possibile cercare gli utenti di Medit Link in base al nome e/o indirizzo dell'attività.

Nei risultati di ricerca, è possibile inviare una richiesta di collaborazione a un'attività con cui si desidera lavorare.

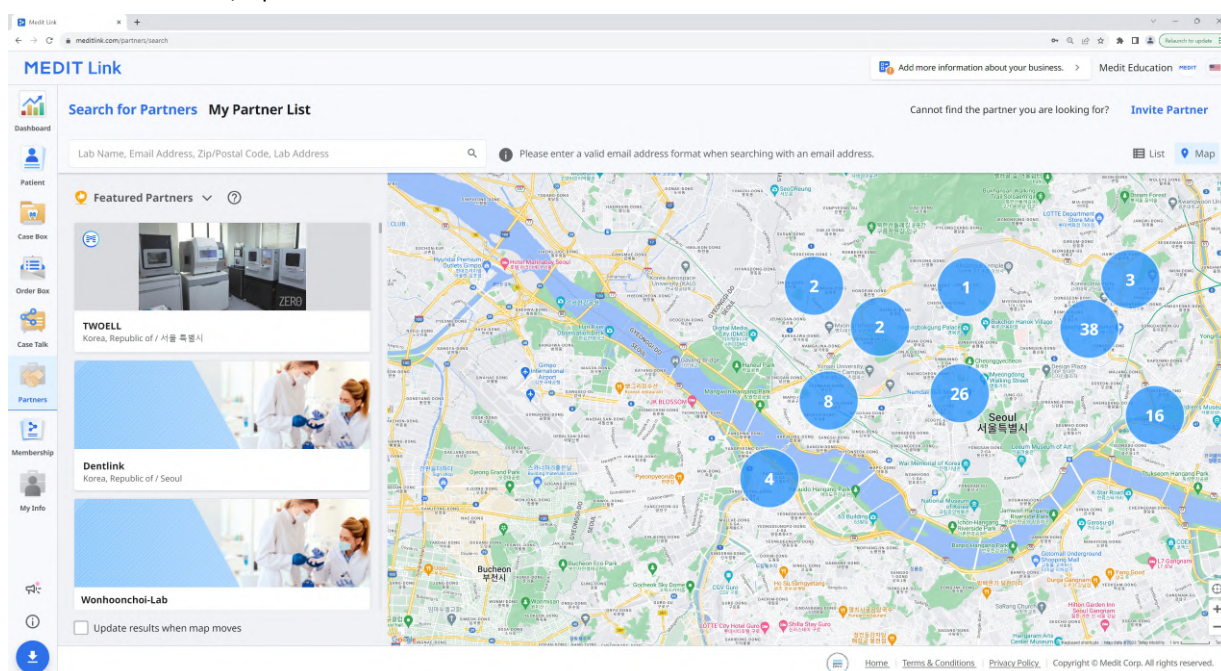

Elenco dei miei collaboratori

È possibile visualizzare le collaborazioni attuali con tutte le attività dei collaboratori esistenti in Elenco dei miei collaboratori.

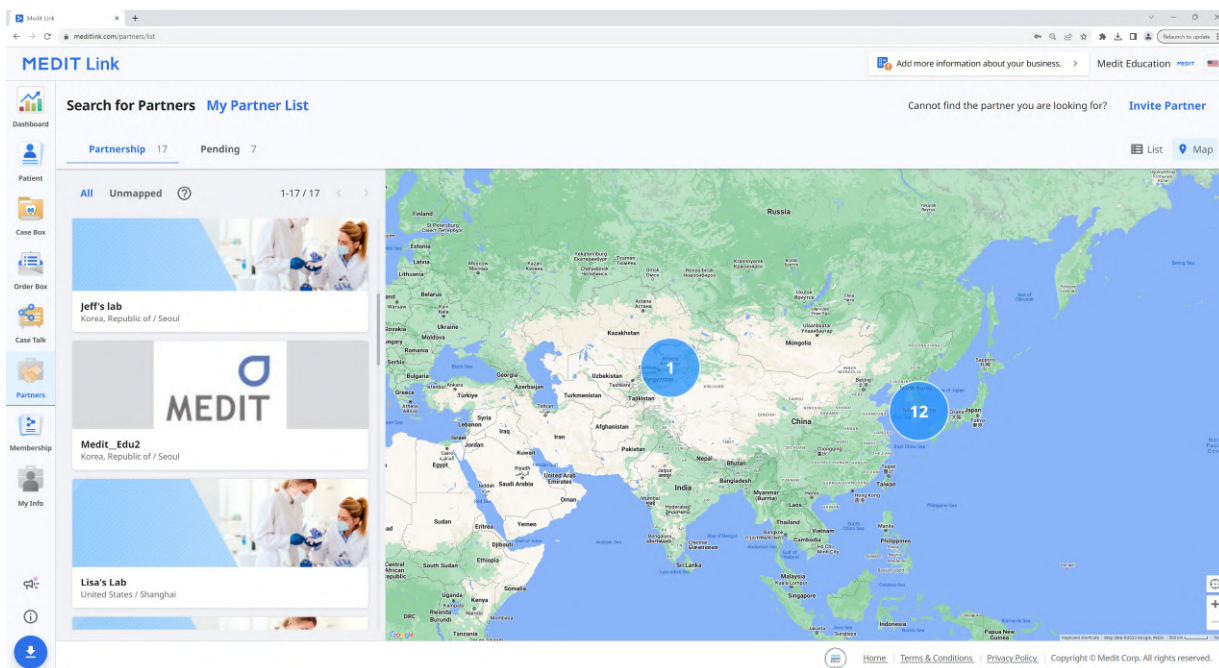

Invita il collaboratore

Se c'è una clinica o un laboratorio con cui si desidera collaborare, è possibile invitarli ad aderire a Medit Link. La collaborazione verrà automaticamente creata una volta accettato l'invito.

1. Cliccare su "Invita il collaboratore" in alto a sinistra della schermata.
2. Inserire l'indirizzo e-mail di un'attività con cui si desidera lavorare e inviare un invito con una richiesta di collaborazione.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. La collaborazione verrà istituita automaticamente non appena l'organizzazione invitata accetta l'invito e si iscrive a Medit Link.

Membership

Abbonamento

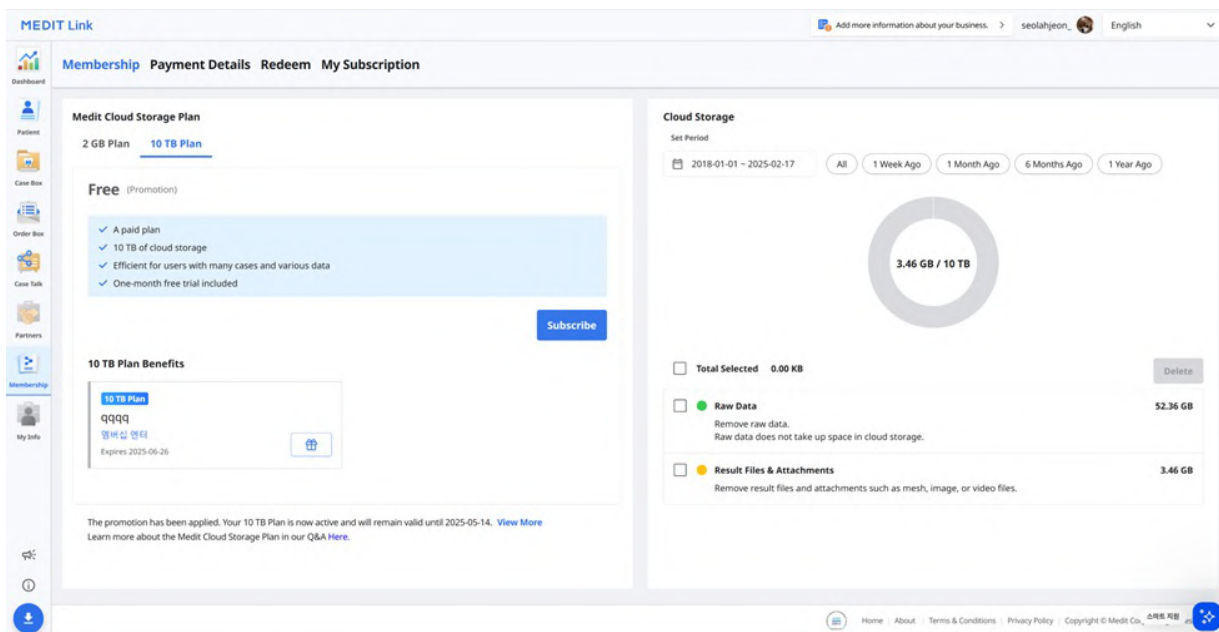

Medit Cloud Storage Plan

È possibile consultare le offerte per ciascun piano, compresi i coupon e i buoni sconto, nonché lo stato attuale dell'abbonamento. È possibile aggiornare il piano o annullare l'abbonamento in qualsiasi momento.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link offre i seguenti piani di archiviazione cloud:

2 GB Plan

- Piano standard gratuito per tutti gli utenti che hanno effettuato l'accesso
- 2 GB di archiviazione cloud
- Rivolto ai nuovi utenti

10 TB Plan

- Piano a pagamento
- 10 TB di archiviazione cloud
- Rivolto a utenti con molti casi e vari dati
- Prova gratuita di un mese


	2 GB Plan	10 TB Plan
Archiviazione cloud	2 GB	10 TB
Tariffa mensile	Gratuito	9,99\$ al mese
* Lo spazio di archiviazione cloud non include i dati non elaborati nel calcolo dello spazio utilizzato.		

Nota

I piani di abbonamento saranno disponibili su Medit Link China. È possibile usufruire gratuitamente del 10 TB Plan fino al rilascio ufficiale della funzione.

Archiviazione cloud

Nella sezione a destra, è possibile gestire l'archiviazione cloud.

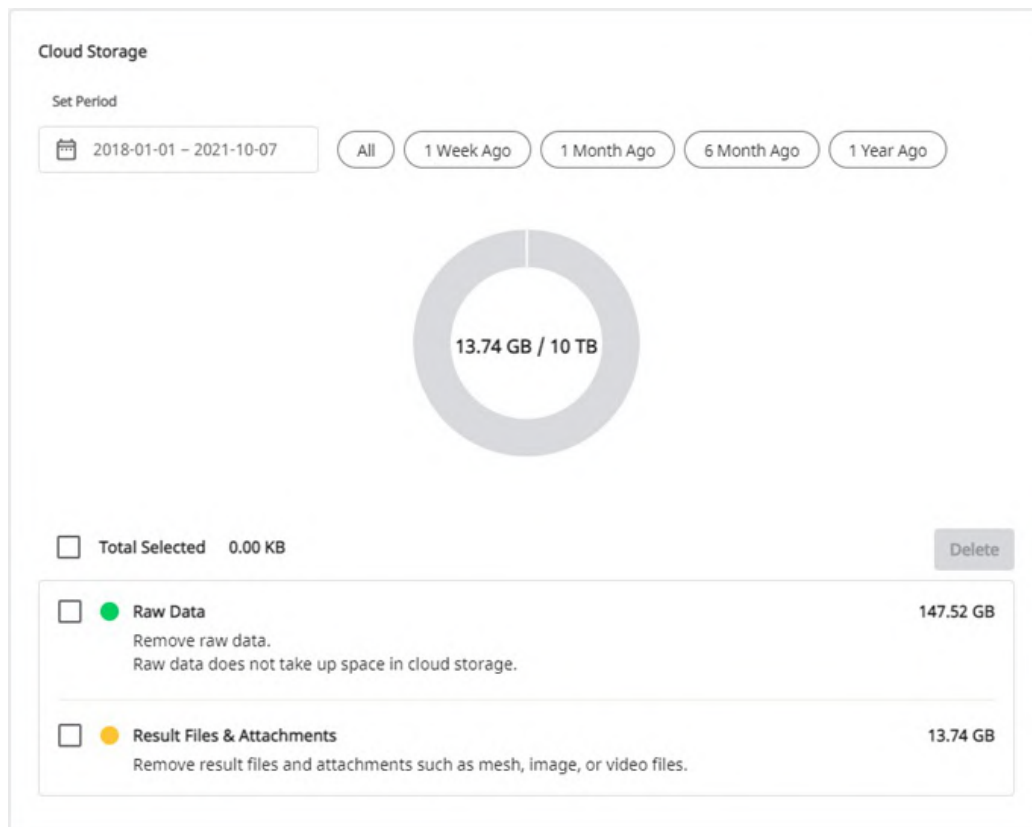

Imposta periodo	Consente di impostare il periodo specifico per eliminare i dati creati entro tale intervallo di tempo. • Tutto: mostra tutti i file. • 1 settimana fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorsa una settimana. • 1 mese fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un mese. • 6 mesi fa: mostra i file dalla cui creazione sono trascorsi sei mesi. • 1 anno fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un anno.
Dati non elaborati	I dati non elaborati non occupano spazio di archiviazione cloud, quindi non saranno nel grafico pi. Tuttavia, se necessario, è possibile gestire i dati non elaborati da qui (ad esempio, eliminandoli per proteggere le informazioni riservate del paziente).
Risultati & allegati	I file dei risultati e gli allegati occupano spazio nel cloud. Se il cloud è pieno, è possibile ricavare più spazio di archiviazione rimuovendo i file superflui.
Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dal cloud per liberare spazio.

Sottoscrivere l'abbonamento

Se attualmente si dispone del 2 GB Plan o del 10 TB Plan con un codice di riscatto, è possibile abbonarsi al 10 TB Plan.

Il pagamento viene completato tramite il servizio Stripe (www.stripe.com).

1. Andare su Abbonamento > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan e cliccare sul pulsante "Abbonati".

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Leggere la descrizione del 10 TB Plan e cliccare nuovamente su "Abbonati".

Subscribe Membership

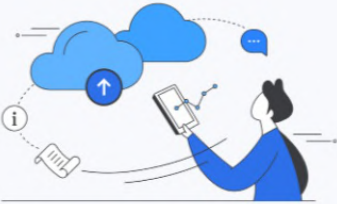

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly


- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. Controllare il prezzo e le condizioni e inserire le informazioni necessarie per il pagamento. Quindi, cliccare su "Abbonati".

Cancel Subscription

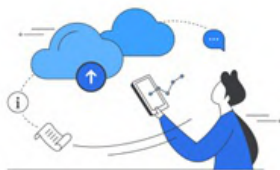

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Per confermare la volontà di annullare la sottoscrizione, cliccare nuovamente su "Annulla la sottoscrizione" nella nuova finestra pop-up.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. L'abbonamento è stato annullato.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Dal giorno del pagamento successivo, si passerà al 2 GB Plan e lo spazio di archiviazione cloud verrà limitato a 2 GB. Se la capacità di archiviazione cloud viene superata, non verrà eseguito il backup dei file e le funzioni di ordinazione e condivisione non saranno disponibili.

Il mio abbonamento

È possibile visualizzare i dettagli dell'abbonamento attuale, rinnovarlo o annullarlo dalla sezione Il mio abbonamento. È inoltre possibile cambiare il metodo di pagamento. La modifica verrà applicata dal prossimo pagamento previsto.

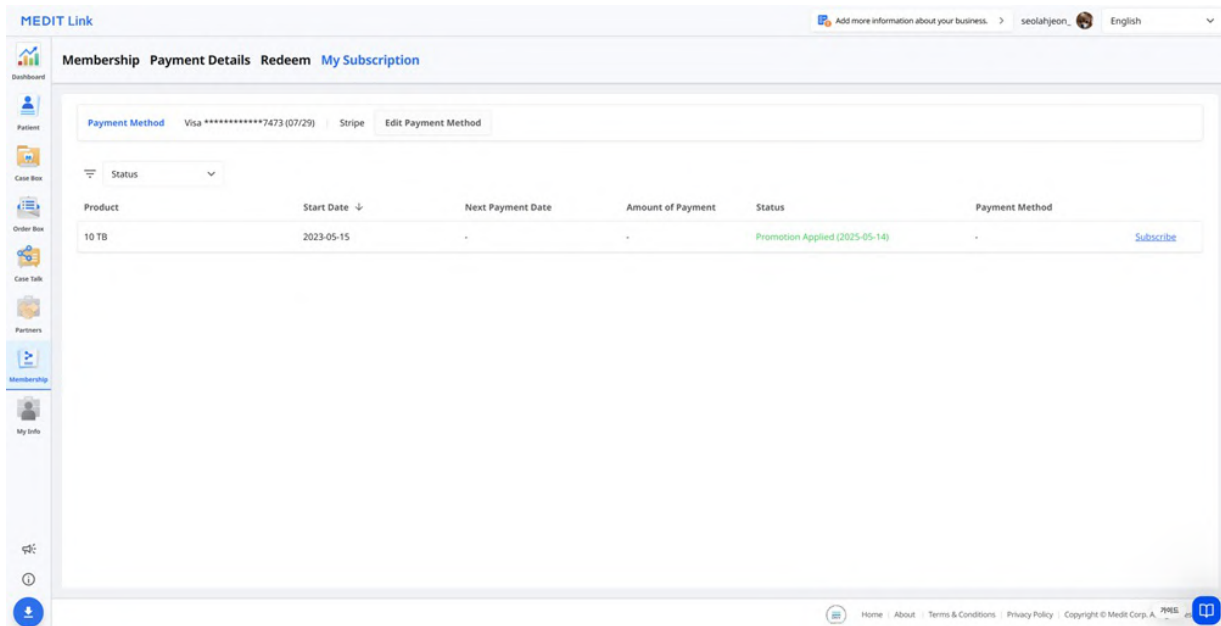

Dettagli


Elemento	Descrizione
Prodotto	Mostra il tipo di abbonamento.
Data di inizio	Mostra la data di inizio dell'abbonamento o della promozione.
Data del prossimo pagamento	Mostra la data del prossimo pagamento.
Importo del pagamento	Mostra l'importo del pagamento.
Stato	Abbonamento - Attivo: l'abbonamento è attivo. - In scadenza: l'abbonamento non sarà rinnovato alla prossima data di pagamento e sarà annullato. - Scaduto: l'abbonamento è terminato. Promozione - Promozione applicata: il codice promozionale è ora attivo. - Promozione in sospenso: il codice promozionale è in attesa di attivazione. - Promozione scaduta: il codice promozionale è scaduto.
Metodo di pagamento	Mostra le ultime quattro cifre della carta utilizzata per il pagamento.

Rinnovare l'abbonamento


Elemento	Descrizione
Piano di archiviazione cloud	Cliccare sul pulsante di abbonamento per rinnovare il 10 TB Plan.
Piano di abbonamento all'app	Accedere all'app per rinnovare l'abbonamento.

Come aggiungere un metodo di pagamento

1. Cliccare su "Modifica il metodo di pagamento".

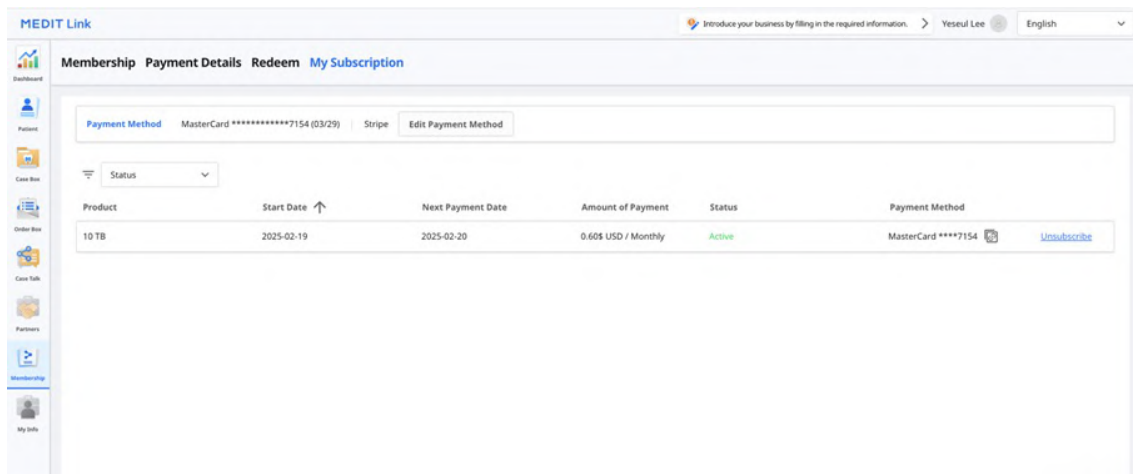

2. Cliccare su "Aggiungi metodo di pagamento".

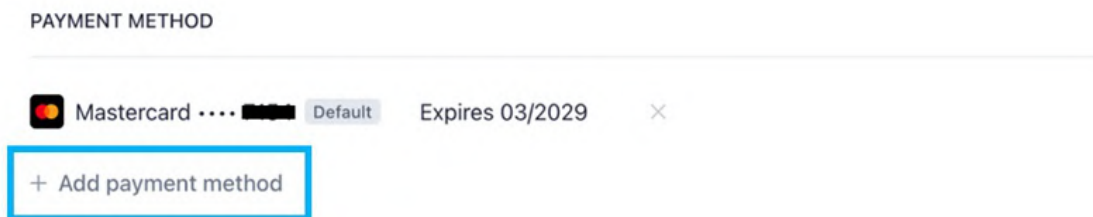

3. Inserire le informazioni richieste e cliccare su "Aggiungi".

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiration date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. Il metodo di pagamento appena aggiunto verrà impostato come predefinito e utilizzato per il pagamento successivo.


PAYMENT METHODS



Come cambiare un metodo di pagamento

1. Cliccare sull'icona del menu espanso accanto al metodo di pagamento che si desidera cambiare nella finestra di dialogo relativa alla fatturazione.

PAYMENT METHODS

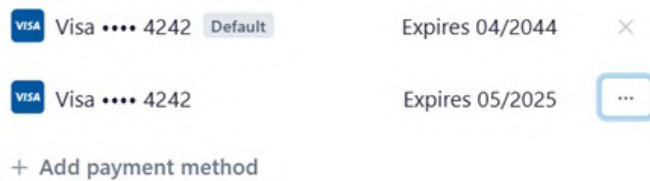

2. Cliccare su "Rendi predefinito" per impostare la carta selezionata come metodo di pagamento predefinito.

CURRENT SUBSCRIPTION


[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

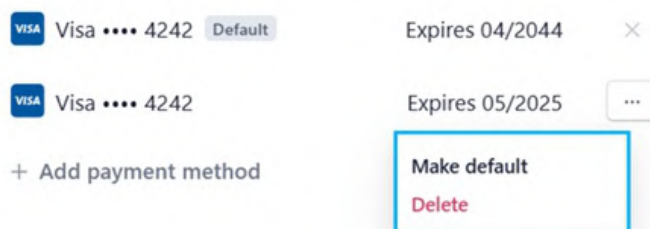

Riscatto

È possibile riscattare un codice promozionale per accedere gratuitamente al 10 TB Plan.

Dettagli

MEDIT Link Add more information about your business. seolah.jeon_dev_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Register

Redeem Code

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting

Cancel

1

Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp.

Elemento	Descrizione
Prodotto	Mostra il piano a cui è applicata la promozione.
Promozione	Mostra il nome della promozione.
Numero di Codice	Mostra il numero di codice.
Data di registrazione	Mostra la data di registrazione del codice.
Da	Mostra la data di inizio della promozione.
A	Mostra la data di scadenza della promozione.
Stato	- Registrato: il codice promozionale è stato aggiunto ed è ora disponibile. - In attesa: il codice promozionale è in attesa di attivazione. - Activated: il codice promozionale è ora attivo. - Usato: il codice promozionale è scaduto.

Registrare il codice di riscatto

- Inserire il codice di riscatto e cliccare su "Registra".
- Leggere l'avviso e scegliere la voce "Registra" o "Applica" nella finestra di dialogo pop-up.
 - Registra:** consente di registrare il codice di riscatto. È possibile attivare e utilizzare il codice di riscatto in un secondo momento dopo la registrazione.
 - Applica:** consente di registrare e attivare il codice di riscatto. Lo sconto promozionale si applica immediatamente.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Attivare il codice di riscatto

È possibile registrare più codici di riscatto, ma è necessario attivare quello che si desidera utilizzare.


1. Cliccare sul pulsante "Attiva" accanto al codice che si desidera utilizzare.
 - Se non sono presenti codici con lo stato "Activated", quello scelto verrà applicato immediatamente.
 - Qualora esista già un codice attivato, il nuovo codice selezionato passa allo stato "Waiting". Alla scadenza del codice di riscatto attualmente attivato, il nuovo codice di riscatto in stato "Waiting" verrà automaticamente attivato.

Nota

È possibile attivare un solo codice di riscatto e solo uno può essere in stato "Waiting".

Dettagli del pagamento


È possibile visualizzare l'abbonamento e lo storico dei pagamenti nella scheda Dettagli del pagamento.

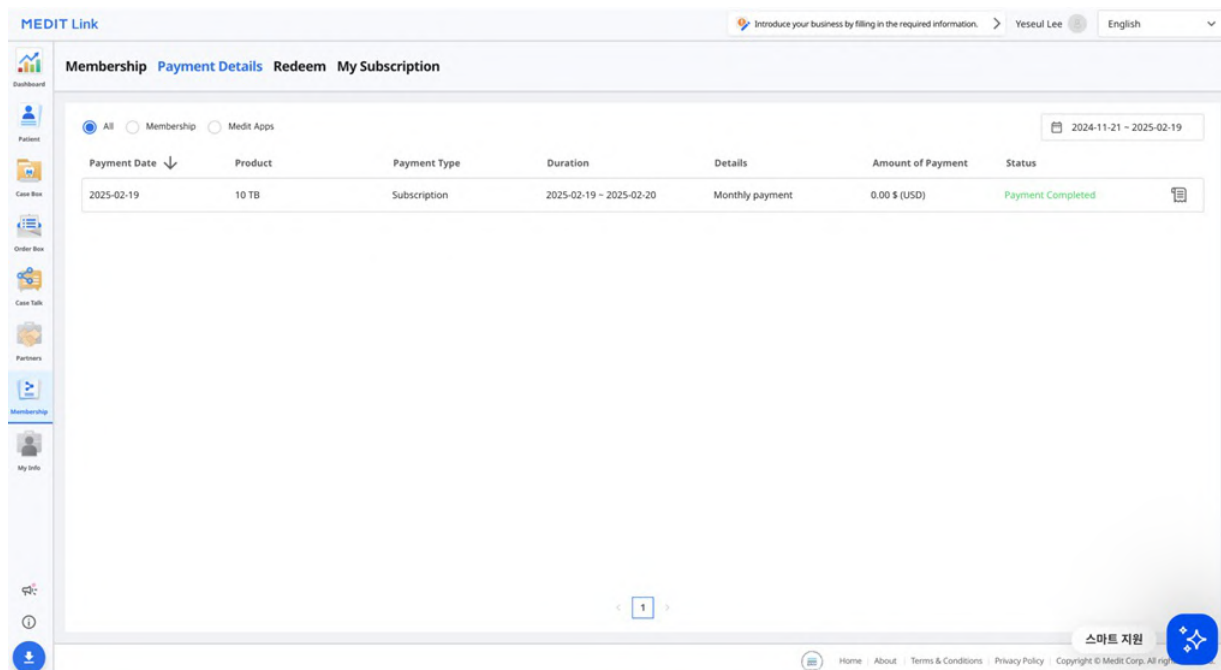


Elemento	Descrizione
Data del pagamento	Mostra la data del pagamento.
Prodotto	Mostra il piano o l'app acquistata.
Tipo di pagamento	Mostra il tipo di pagamento: • Abbonamento • Pagamento una tantum
Durata	Mostra il periodo di abbonamento.
Dettagli	Mostra informazioni dettagliate sul pagamento.
Importo del pagamento	Mostra l'importo per un abbonamento o un acquisto una tantum.
Stato	• Pagamento completato: il pagamento è stato elaborato. • Pagamento non riuscito: il pagamento non è stato elaborato. • Pagamento incompleto: il pagamento non è stato completato. Cliccare su "Paga ora" per procedere. • In attesa: il pagamento è in sospeso per il rinnovo dell'abbonamento.

Visualizza i dettagli della fattura

È possibile visualizzare le fatture e le ricevute di pagamento cliccando sull'icona della ricevuta a destra.

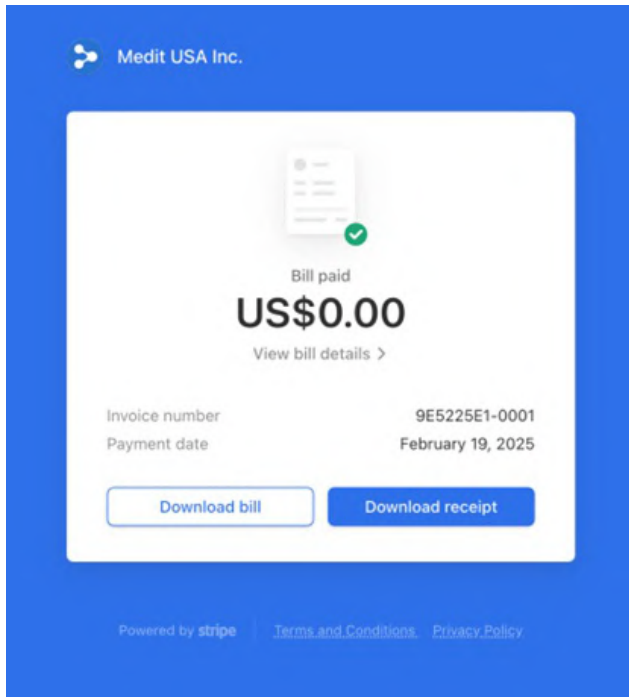

Cliccare su "Visualizza i dettagli della fattura" per i dettagli del pagamento.

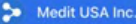



Bill paid

US\$0.00

[View bill details](#) 

Invoice number 9E5225E1-0001

Payment date February 19, 2025

[Download bill](#) [Download receipt](#)

Powered by [stripe](#) | [Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

[X Close Bill Details](#)

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	
	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Il mio account

In My Info, è possibile rivedere e modificare le informazioni fornite in fase di registrazione e controllare lo stato dell'abbonamento.

La mia clinica/Il mio laboratorio (solo account Amministratore)

È possibile rivedere e modificare le informazioni sulla clinica o sul laboratorio. Questa sezione è disponibile esclusivamente per gli account Amministratore.

MEDIT Link


Dashboard


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account

My Clinic


My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

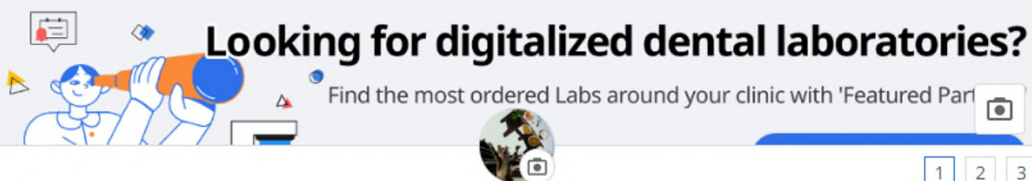

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Il mio scanner

In questa sezione, è possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo connesso per l'account.

Elemento	Descrizione
Tipo	Mostra il nome del modello.
Numero di Serie	Mostra il numero di serie del dispositivo.
Tempo di utilizzo	Mostra il tempo di utilizzo del dispositivo.
Stato	Mostra lo stato di registrazione del dispositivo: "Registrato" indica che lo scanner è stato connesso e registrato correttamente. "Non registrato" indica che lo scanner non è più registrato. Se lo scanner viene registrato in un altro gruppo, perderà la registrazione in quello attuale.
Ultima connessione	Mostra la data dell'ultima connessione.
Ultima calibrazione	Mostra la data dell'ultima calibrazione.
Data di inizio della garanzia	Mostra la data di attivazione della garanzia.
Data di scadenza della garanzia	Mostra la data di scadenza della garanzia.
Giorni rimanenti	Mostra il numero di giorni rimanenti alla scadenza della garanzia.
Acquista	Consente all'utente di acquistare e prolungare la garanzia.
Elimina	Consente di rimuovere lo scanner dall'elenco.

Altro menu

Avvisi & aggiornamenti

È possibile controllare gli avvisi importanti di Medit e gli aggiornamenti di programma del software Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Siti web correlati

È possibile ricevere informazioni sull'utilizzo di Medit Link. Accedere alle risorse educative e informative di Medit, come Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro assistenza Medit.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Scarica Medit Link App

È possibile scaricare l'ultima versione del file di installazione del programma dal web. Questo menu è utile quando si perde programma di installazione fornito nel pacchetto del prodotto o si dispone di un programma di installazione obsoleto.



Nota

Medit Link si aggiorna automaticamente quando si dispone di una connessione Internet.



Windows

macOS

Panoramica

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Search: All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Barra del titolo	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Barra del titolo .
2	Menu	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Menu .
3	Strumenti e funzioni	Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Medit Link App > Visualizzatore file e Medit Link App > Opzioni di visualizzazione .
4	Elenco dei casi	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Filtro e cerca .

La seguente tabella riassume i menu disponibili in ciascuna tipologia di account (clinica o laboratorio).

Tipologia di account		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Account Clinica	Amministratore	O	O	O	X	X	O	O	O
	Membro	O	O	O	X	X	O	* Solo funzione di ripristino	O
Account Laboratorio	Amministratore	X	X	X	O	O	O	O	O
	Membro	X	X	X	O	O	O	* Solo funzione di ripristino	O

Barra del titolo

La barra del titolo consente di accedere rapidamente a funzioni quali informazioni sull'account, notifiche, avvisi e aggiornamenti, impostazioni e stato della rete.



Le mie informazioni

Le mie informazioni contiene informazioni di base come l'immagine del profilo, il nome della clinica o del laboratorio, l'indirizzo e-mail e il nome utente.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Notifiche

È possibile visualizzare le notifiche relative a collaborazioni, ordini e processi di lavoro.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	Spuntare la casella per visualizzare solo i messaggi non letti.
2	Cliccare su una notifica per passare immediatamente al caso o alla pagina web correlati.

Avvisi e aggiornamenti

È possibile visualizzare gli avvisi importanti di Medit e gli aggiornamenti di programma del software Medit.

Impostazioni

La finestra di dialogo Impostazioni consente di configurare il programma.

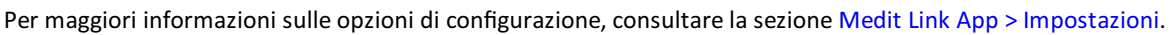

Medit Link consente di utilizzare agevolmente tutte le funzioni quando si è connessi a una rete.

68

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Se la connessione di rete non è buona, potrebbero verificarsi le seguenti limitazioni:

- Alcune funzioni saranno limitate, come l'ordine o la creazione di un caso, la condivisione tramite Case Talk e la sincronizzazione su cloud.
- Le prestazioni complessive del servizio possono ridursi a causa dell'effetto dell'ambiente di rete.

In questo caso, è possibile accedere alla modalità Offline per svolgere attività di base e utilizzare le funzioni che richiedono Internet una volta connessi.

Nota

Il simbolo della rete indica la velocità di risposta tra l'area corrente e AWS (Amazon Web Service). Non indica la velocità della rete dell'utente, quindi a volte potrebbe mostrare lo stato come scarso o pessimo anche se la rete ha una velocità sufficiente.

Se l'altro processo sfrutta la stessa rete, la velocità potrebbe risultare scarsa o pessima e le prestazioni complessive di Medit Link potrebbero essere negative. In questo caso, evitare di condividere la rete con altri processi.

Ad esempio, la funzione "Carica dati non elaborati" è una parte importante del processo di rete. Se il simbolo mostra uno stato scarso o pessimo, recarsi su Impostazioni > Carica dati non elaborati e disattivare "Carica automaticamente".

Impostazioni

Generali

Fornisce opzioni per la configurazione generale del sistema.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Cartella di salvataggio	Consente di specificare una cartella in cui archiviare i dati dei risultati generati in Medit Link e programmi collegati.	
Cartella di installazione delle app	Consente di specificare un percorso di installazione per Medit Apps e le applicazioni partner disponibili nell'App Box.	
Impostazioni lingua	Consente di selezionare la lingua del programma.	
Etichettatura dei denti	Consente di selezionare un sistema di etichettatura dei denti, scegliendo tra FDI e US.	
Notifiche	Quando questa opzione è attiva, l'utente riceverà notifiche relative agli aggiornamenti del programma.	
Carica dati non elaborati	Quando questa opzione è attiva, i dati non elaborati verranno caricati automaticamente nel cloud. La funzione aiuta a effettuare il backup dei dati originali ed eseguire una scansione fluida quando si utilizza Medit Link con lo stesso account su un altro PC. Il backup dei dati originali nel cloud si applica esclusivamente ai dati acquisiti in Medit Scan for Clinics.	
Scansione rapida	Consente di scegliere se si desidera visualizzare automaticamente le seguenti fasi di scansione in Medit Scan for Clinics senza dover compilare le informazioni del modulo. • Pre-operazione per mascella • Pre-operazione per mandibola • Scansione del viso	
Opzioni di visualizzazione	Rendering avanzato	Quando questa opzione è attiva, il modello 3D viene visualizzato in un rendering più vivido e realistico.
	Regola la texture del colore	Regola la luminosità del modello 3D. * I colori risultanti potrebbero differire leggermente da Medit Link quando si aprono gli stessi dati con altri software.
Programma di miglioramento dell'esperienza utente Medit	Consente all'utente di aderire al programma di miglioramento dell'esperienza utente Medit. • Utilizziamo le informazioni raccolte per migliorare i nostri prodotti e servizi. • Non raccogliamo alcuna informazione che identifichi le persone.	
Pagina predefinita dopo l'accesso	Consente di selezionare il menu predefinito da visualizzare all'avvio del programma. • Gli account Clinica possono scegliere tra Patient e Case Box • Gli account Laboratorio possono scegliere tra In Box e Work Box	

Gestione dell'archiviazione

Consente di controllare e gestire lo spazio di archiviazione locale e cloud.

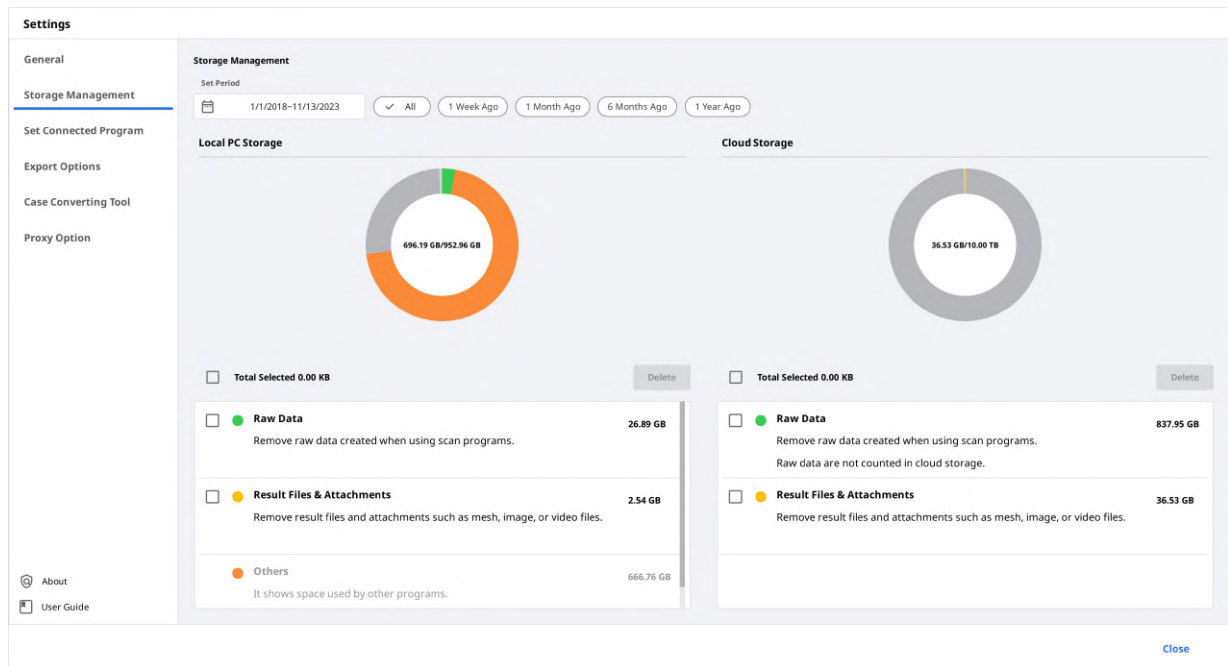

Imposta periodo

Consente di impostare il periodo specifico per eliminare i dati creati entro l'intervallo di tempo indicato di seguito.

- Tutto: mostra tutti i file.
- 1 settimana fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorsa una settimana.
- 1 mese fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un mese.
- 6 mesi fa: mostra i file dalla cui creazione sono trascorsi sei mesi.
- 1 anno fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un anno.

Archiviazione locale

Consente di gestire lo spazio di archiviazione su PC.

Dati non elaborati	Consente di rimuovere i dati non elaborati selezionati dal PC. Se i dati non elaborati sono già stati caricati nel cloud, è possibile scaricarli e utilizzarli in qualsiasi momento.
Risultati & allegati	Consente di rimuovere i file dei risultati e gli allegati, come mesh, immagini e video, dal PC. Se questi file sono già stati caricati nel cloud, è possibile scaricarli e utilizzarli in qualsiasi momento.
Altri	Consente di visualizzare i file utilizzati per il funzionamento del sistema e di altri programmi. Mostra la memoria del PC. Non è possibile rimuovere questi file da Medit Link.
Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dal PC.

Archiviazione cloud

Consente di gestire lo spazio di archiviazione cloud.

Dati non elaborati	I dati non elaborati non occupano spazio di archiviazione cloud, quindi non saranno nel grafico pi. Tuttavia, se necessario è possibile gestire i dati non elaborati da qui (ad esempio, possono essere eliminati per proteggere le informazioni riservate del paziente, ecc.).
Risultati & allegati	I file dei risultati e gli allegati occupano spazio nel cloud. Se il cloud è pieno, è possibile ricavare più spazio di archiviazione rimuovendo i file superflui.
Acquista spazio di archiviazione	Se l'utente ha un 2 GB Plan, può abbonarsi al 10 TB Plan per aumentare lo spazio di archiviazione cloud.
Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dall'archivio cloud per liberare spazio di archiviazione.

Imposta il programma collegato

Consente di gestire i programmi che supportano integrazioni in Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

È possibile collegare i seguenti programmi:

	Account Clinica	Account Laboratorio
Programma di scansione	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Nota

L'integrazione dei seguenti servizi non è disponibile per Medit Link per Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Opzioni di esportazione

Consente di stabilire come esportare i file da Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

Tipo	Consente di selezionare il programma CAD che si desidera utilizzare per la progettazione. Il programma regolerà i risultati in base alla selezione dell'utente, consentendo di procedere con la progettazione senza ulteriori allineamenti degli assi.
Esporta i file in	Consente di specificare il percorso in cui si desidera archiviare i risultati.
Formato mesh	Consente di specificare il formato del file mesh finale.
Formato immagine	Consente di specificare il formato dei file di immagine esportati.
Comprimi & Combina	Comprimi i file: comprime tutti i risultati in un unico file. Combina mesh individuale: combina tutti i risultati per la mascella o la mandibola in un unico file. Quando si utilizzano programmi che non possono importare e lavorare con più file, è possibile unirli in uno per lavorare in quei programmi.
Opzioni quando la stessa cartella o file esiste già.	Consente di scegliere l'azione predefinita per i casi in cui esistono la stessa cartella o nome file nel percorso di destinazione. • Chiedere sempre durante l'esportazione. • Esportare un nuovo file e sovrascrivere quelli esistenti. Il file attualmente archiviato andrà perso. • Creare una cartella ed esportare i file
Regola per il nome della cartella	Consente di stabilire le regole per la creazione di un nome di cartella durante l'esportazione dei file. Le regole impostate verranno applicate alla denominazione della cartella e il file esportato verrà salvato nella cartella creata. È possibile utilizzare le seguenti informazioni per impostare la regola. • Account clinica Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID del paziente, ID dell'ordine • Account laboratorio Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID dell'ordine
Regola per il nome del file	Consente di definire le regole per il nome del file esportato. È possibile utilizzare le seguenti informazioni per impostare la regola. • Account clinica Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID del paziente, ID dell'ordine • Account laboratorio Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID dell'ordine

Strumento di conversione dei casi

È possibile spostare i casi tra diversi account esportando i casi esistenti dell'account o importando i casi esportati da altri account.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

Esportare il caso

È possibile esportare i casi dell'account attualmente collegato al PC locale.

1. Aprire Medit Link e cliccare sull'icona delle Impostazioni.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Total Patients: 3500

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

New Patient

New Case

2. Scegliere la sezione "Strumento di conversione dei casi" nel menu a sinistra.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

All

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ 48	1	2025-02-07 PM 3:33
☐ Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion CASE_1	2025-02-07 PM 3:33
☐ PM Model's Case	PM Model	2025-02-07 PM 3:33
☐ exocad Result	3462_Visualization TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Mandible Movement - Clone - Clone	Mandible Movement	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - HUI - HUI	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - HUI	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33

File Name

CaseBox_2025-2-21_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
38.meditex	2025-02-20 PM 3:05
37.meditex	2025-02-20 PM 3:05

Close

3. Nella sezione Esporta, impostare un periodo o cercare i casi da esportare, se necessario.

Export

All

All / Contains

0 / 767

Patient Name

Last Modified Date

2025-02-07 PM 3:34

2025-02-07 PM 3:34

4. Scegliere i casi che si desidera esportare dall'elenco nella sezione "File da esportare".

Export

All

All / Contains

2 / 767

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. Impostare il nome del file modificando il nome del caso nel campo Nome del file.
6. Impostare la cartella di destinazione in cui esportare i casi selezionati.
7. Cliccare su "Esporta".
8. Cliccare su "Sì" per aprire la cartella in cui è stato esportato il file.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. I casi esportati vengono salvati in formato .meditex.

Importare il caso


1. Aprire Medit Link e cliccare sull'icona delle Impostazioni.

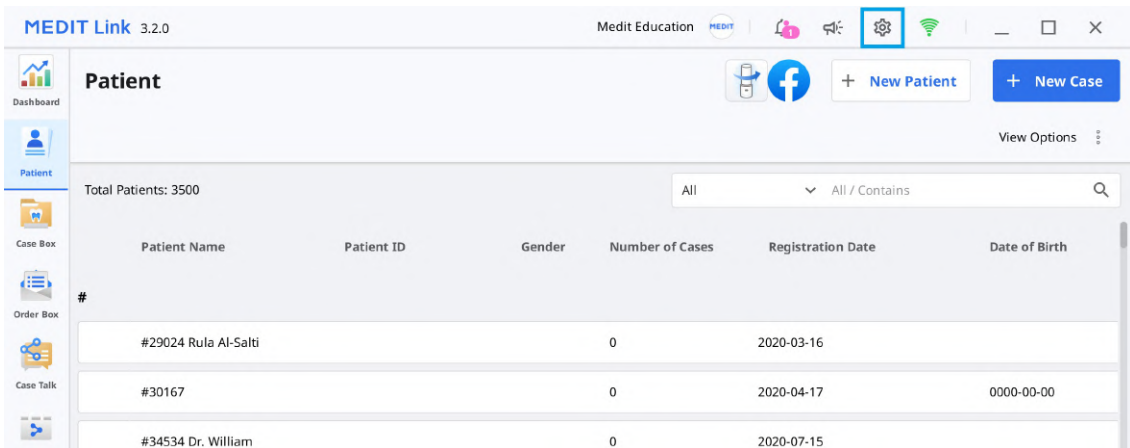

2. Scegliere la sezione "Strumento di conversione dei casi" nel menu a sinistra.

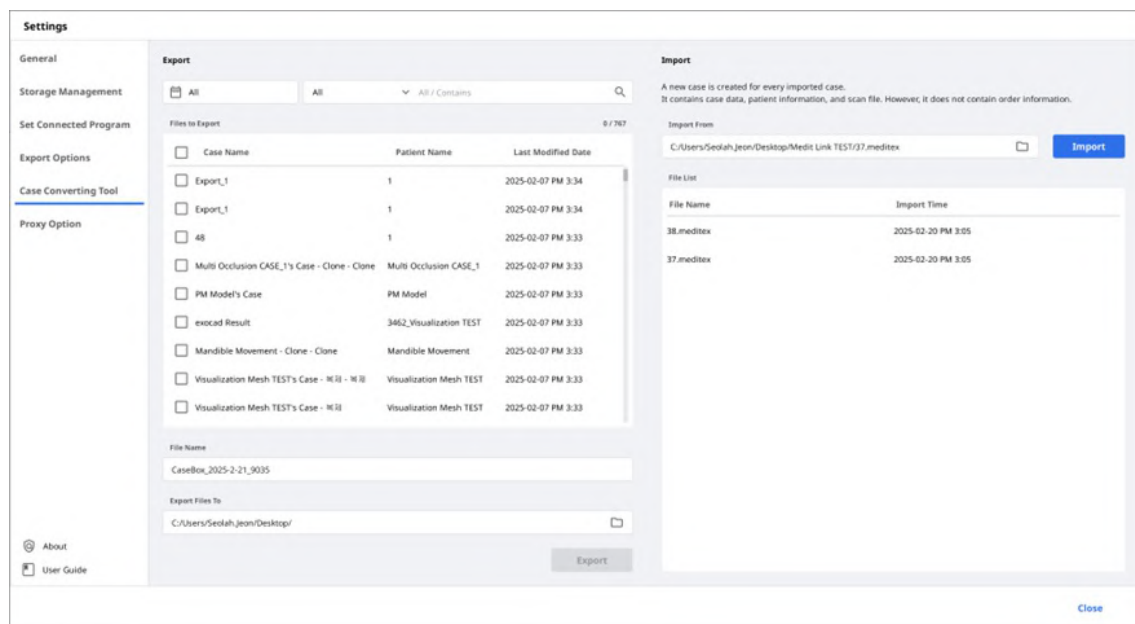

3. Nella sezione Importa, cliccare sull'icona della cartella per cercare nel PC il file .meditex che si desidera importare.

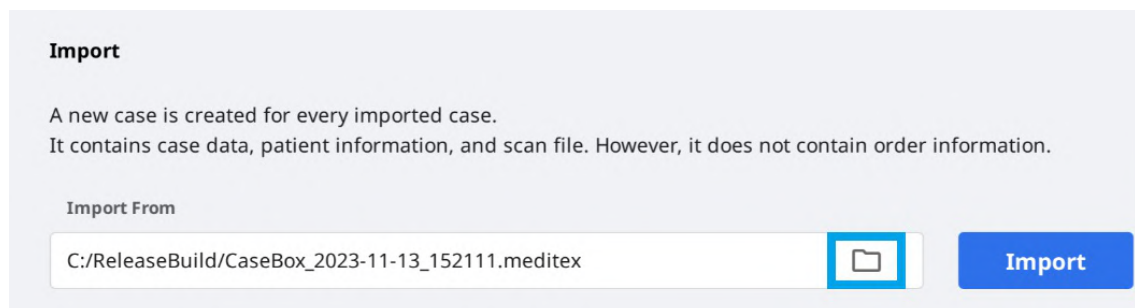

4. Cliccare sul pulsante "Importa" e cercare i file da importare nell'elenco mostrato di seguito.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Il caso importato verrà anche visualizzato in Case Box (account Clinica) o in Work Box (account Laboratorio).

Opzioni proxy

In alcuni ambienti di rete limitati, è possibile modificare le impostazioni di rete.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

[Close](#)

Informazioni

Mostra informazioni dettagliate su Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Manuale utente


Consente di scaricare il manuale utente per Medit Link.

È necessaria una connessione a Internet per aprire il manuale utente.

Menu

Dashboard

È possibile consultare le statistiche per l'intero lavoro svolto su Medit Link tramite grafici e diagrammi visualizzabili, sia in Medit Link App che su Medit Link Web.

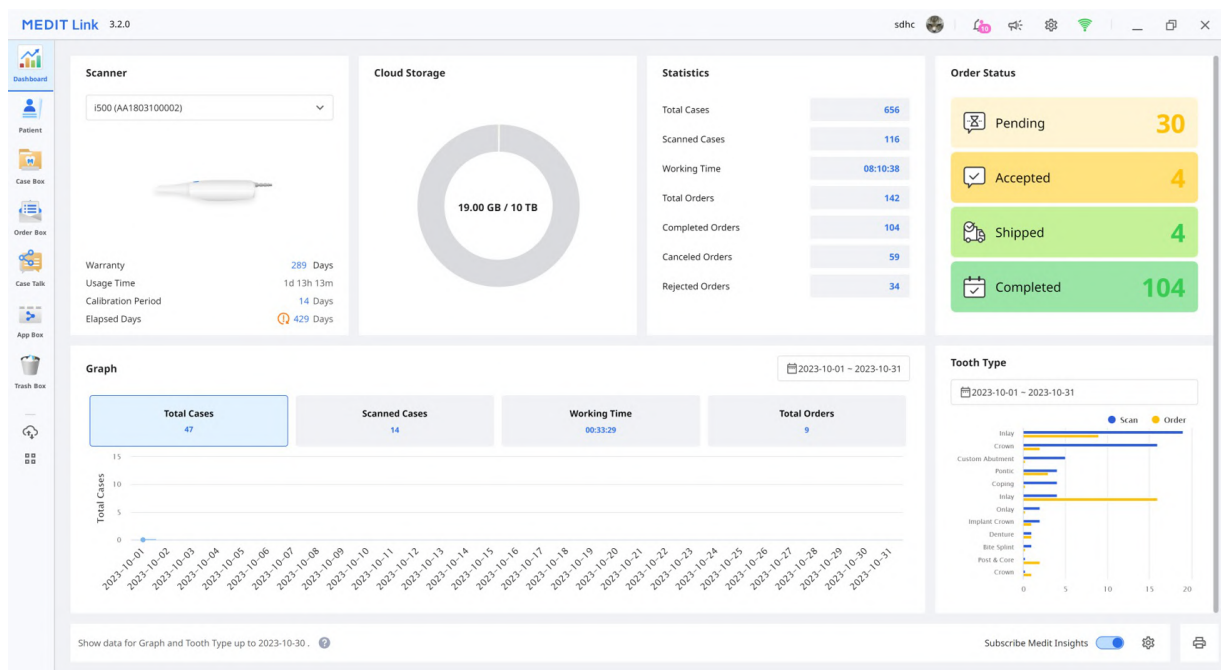

Per maggiori informazioni sulla dashboard e su Medit Insights, fare riferimento a [Medit Link Web > Dashboard](#).

Patient

È possibile aggiungere, modificare, rimuovere o unire i pazienti nel menu Patient.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggsdgsdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Aggiungere un nuovo paziente

1. Cliccare su "Nuovo paziente".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yy yy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo


Cancel Save

2. Inserire le informazioni necessarie nella finestra di dialogo Nuovo paziente, quindi cliccare su "Salva".

Rimuovere il paziente

È possibile rimuovere un paziente solo quando non sono presenti casi per lo stesso.

1. Selezionare il paziente per rimuoverlo dall'elenco.

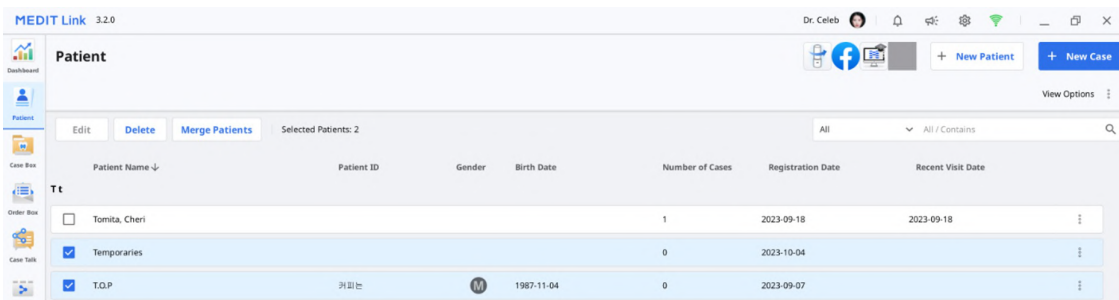


2. Cliccare su "Rimuovi".

Unire i pazienti

È possibile unire tutti i casi di più pazienti in un unico paziente.

1. Selezionare dall'elenco i pazienti che si desidera unire.

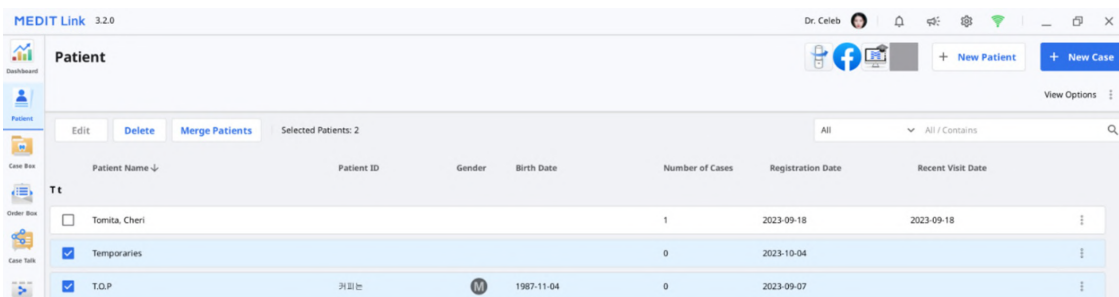

2. Cliccare su "Unisci i pazienti".
3. Selezionare il paziente target in cui si desidera unire tutti i casi.
4. Tutti i casi vengono uniti nel paziente target. Le informazioni del paziente target vengono mantenute.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Cliccare su "Applica" per procedere con l'unione.

Case Box/Work Box

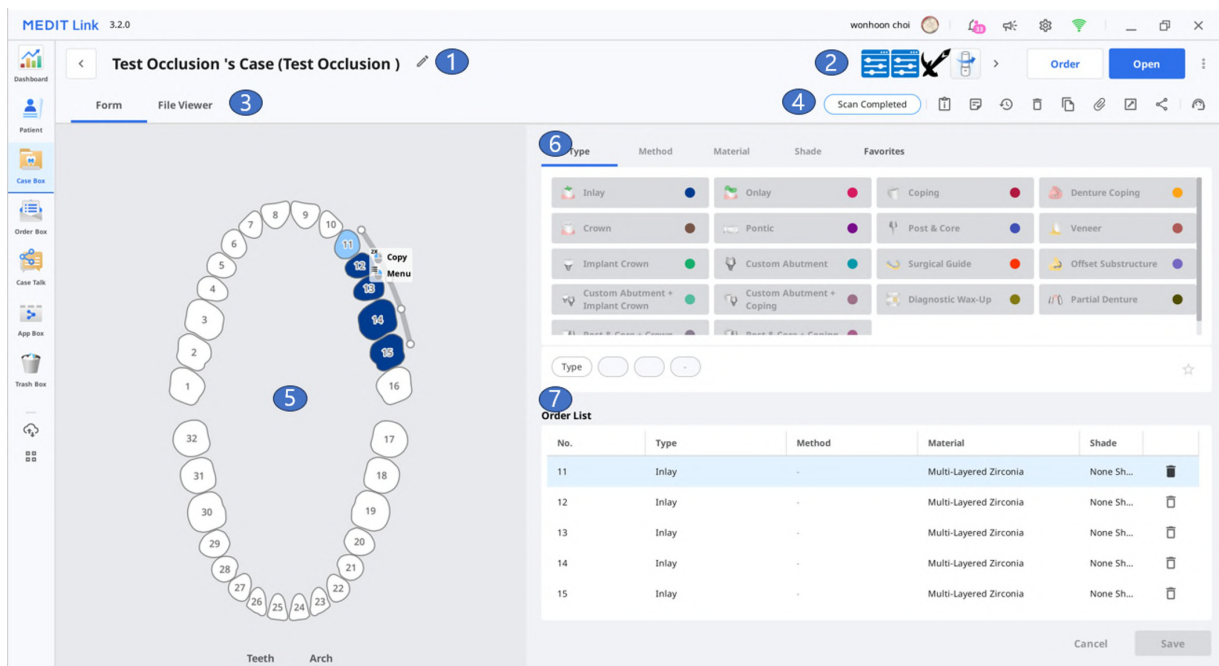

1	Mostra il nome del caso e il nome del paziente.
2	Fornisce le funzioni chiave disponibili: pulsante Scansiona o Apri, pulsante di ordinazione, icone dell'app.
3	Mostra le schede disponibili: Modulo, Visualizzatore file.
4	Mostra le funzioni per la gestione di casi e file.
5	Mostra l'interfaccia utente di registrazione del modulo per il programma di scansione selezionato.
6	Fornisce le informazioni su tipo/metodo/materiale/tonalità che gli utenti possono scegliere per il numero di dente selezionato.
7	Mostra le informazioni su tipo/metodo/materiale/tonalità applicate ai denti selezionati.

Schede in Case Box/Work Box


Modulo	Visualizzatore file
La scheda relativa al modulo fornisce un'interfaccia utente per l'inserimento delle informazioni di base per il lavoro di scansione, come il tipo, il metodo e il materiale per i numeri dei denti, oltre alle opzioni di scansione. Le informazioni inserite vengono trasmesse al programma di scansione connesso e utilizzate come informazioni sull'ordine quando si effettua un ordine con il collaboratore.	Consente di visualizzare i file dei risultati generati dai programmi di scansione e CAD. Il visualizzatore file mostra e gestisce le immagini 2D e i modelli 3D acquisiti o allegati.

Funzioni in Case Box/Work Box

In Case Box/Work Box sono disponibili le seguenti funzioni.

	Stato del caso	Mostra lo stato del caso.								
	Vai a Order Box/In Box	Fornisce una scorciatoia per lo stesso caso in un'altra box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Informazioni sul caso	Consente di rivedere i dettagli del caso e salvarli come PDF o stamparli.								
	Promemoria & Tag	Consente di aggiungere un promemoria o dei tag quando si registra o si ordina un caso. Utilizzare queste funzioni per comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva o supplementare sul caso ai collaboratori.								
	Cronologia del caso	Fornisce informazioni dettagliate sulla cronologia del caso. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Elimina	Elimina il caso. Non è possibile eliminare i casi ordinati o quelli creati offline.								
	Clona	Consente di creare un duplicato del caso corrente in Case Box. Tutti i dati verranno copiati nel caso clonato. Questa funzione consente di replicare le informazioni sul trattamento per il medesimo paziente o di effettuare un ordine aggiuntivo con le stesse informazioni o file.								
	Allega	Consente di allegare file in diversi formati.								
	Esporta	Consente di esportare i file dei risultati di scansione o CAD sul PC locale. Per l'esportazione dei file è possibile scegliere il formato preferito. I file esportati possono essere utilizzati in software CAD e CAM per ulteriori interventi.								
	Condividi	Consente di creare un link per la condivisione. Gli utenti in possesso del link condiviso possono accedere ai dati 3D in un browser come Chrome, Firefox o Safari senza installare programmi aggiuntivi. È possibile condividere liberamente il link con chiunque o solo con persone specifiche. È inoltre possibile impostare un codice PIN o una data di scadenza del link per proteggere le informazioni riservate.								
	Invia richiesta di assistenza	Porta a una pagina del centro assistenza Medit per inviare una richiesta di supporto.								

Order Box/In Box

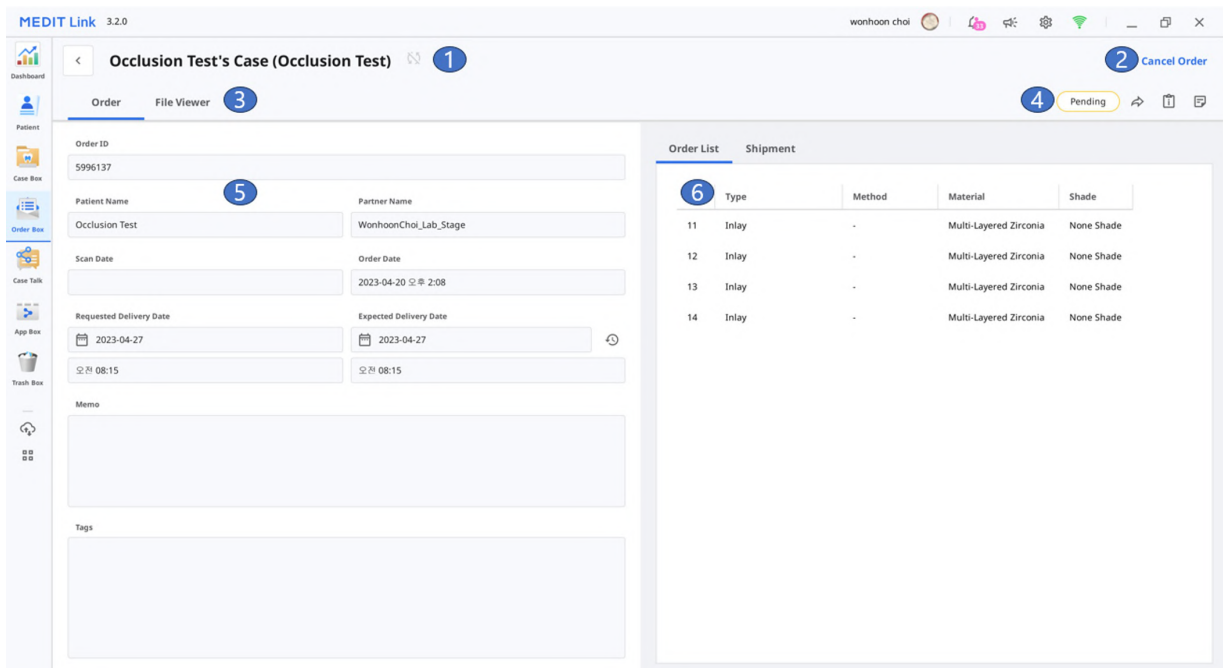

1	Mostra il nome del caso e il nome del paziente.
2	Fornisce funzioni per la gestione degli ordini (accettazione/cancellazione; consegna/ricezione).
3	Mostra le schede disponibili: Ordine, Visualizzatore file.
4	Mostra le funzioni per la gestione di casi e file: stato del caso, comandi rapidi per informazioni dettagliate, informazioni sul caso, promemoria & tag, ecc.
5	Mostra informazioni dettagliate relative all'ordine, come il numero dell'ordine, il nome del paziente, il nome del collaboratore, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna e promemoria & tag.
6	Mostra informazioni sul prodotto ordinato e sullo stato della consegna.

Schede in Order Box/In Box

Ordine	Visualizzatore file
Consente di visualizzare informazioni dettagliate relative all'ordine, come il numero dell'ordine, il nome del paziente, il nome dell'account, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna, promemoria e tag.	Consente di visualizzare i file generati dalle operazioni di scansione/CAD. Il visualizzatore file mostra e gestisce le immagini 2D e i modelli 3D acquisiti o allegati.


Case Talk

I casi creati in Medit Link possono essere condivisi con persone specifiche, con chiunque abbia il link condiviso o con gli iscritti di Medit Link.

L'utente può visualizzare un elenco di tutti i casi condivisi tramite Case Talk in Medit Link App e Medit Link Web.

Nota

Il servizio Case Talk necessita di una connessione a Internet.

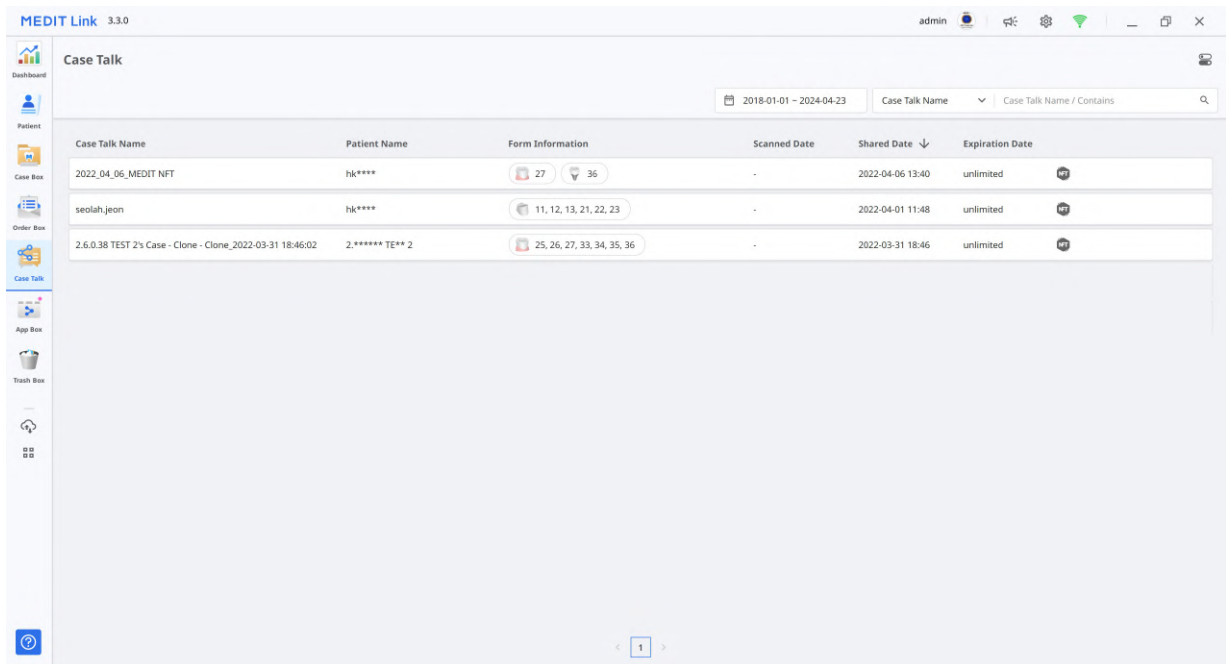


Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

I casi condivisi possono essere visualizzati tramite browser web senza installare un programma a parte, consentendo una comunicazione semplice sui dati 3D su vari dispositivi.

App Box

L'App Box offre vari programmi aggiuntivi che integrano il flusso di lavoro di scansione di base e migliorano la produttività. È possibile scaricare e installare le applicazioni fornite per creare apparecchi dentali, analizzare i dati di scansione, assistere l'utente durante un consulto o semplificare il processo di lavoro.

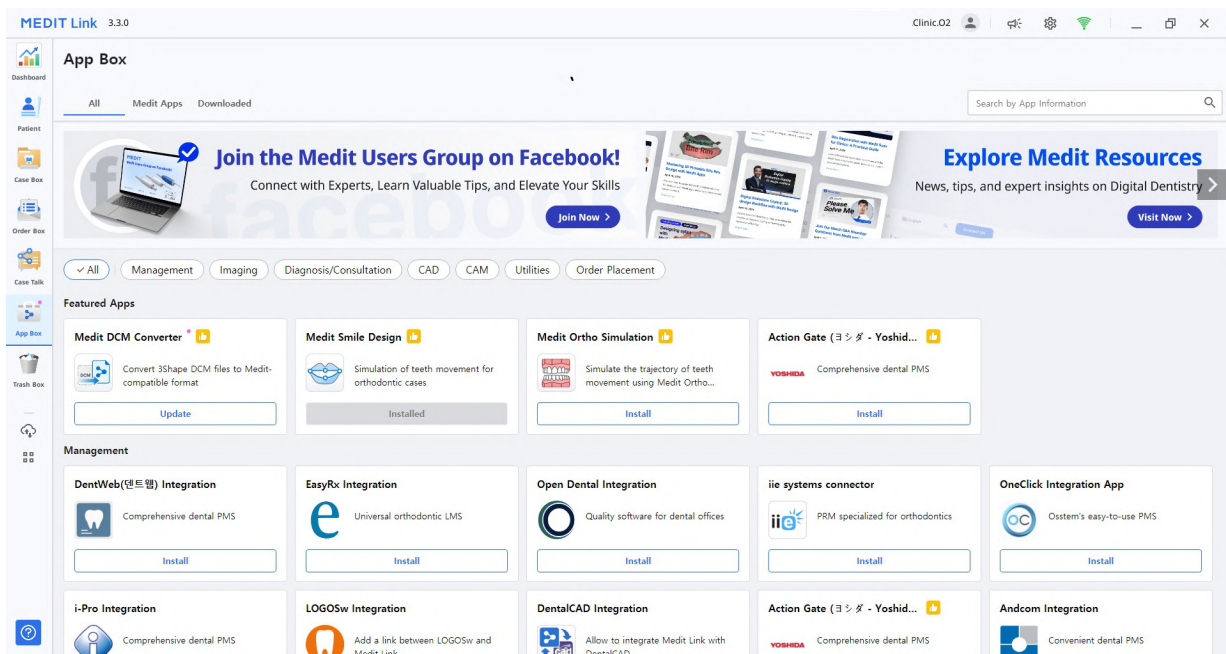

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now >](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now >](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update](#)
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install](#)
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install](#)
- iie systems connector**: PRIM specialized for orthodontics. [Install](#)
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install](#)
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link. [Install](#)
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS. [Install](#)

Tutto


La scheda "Tutte" mostra l'elenco di tutte le app fornite, comprese le app originali sviluppate da Medit (Medit Apps) e le app dei collaboratori, che sono app di integrazione con i partner di Medit di diversi settori dell'odontoiatria digitale, come la stampa 3D, il software CAD/CAM, ecc.

Medit Apps

La scheda "Medit Apps" mostra solo l'elenco delle applicazioni originali sviluppate da Medit.

Scaricato

La scheda "Scaricate" mostra l'elenco delle applicazioni attualmente installate sul PC e di quelle che sono state scaricate dall'account utente.

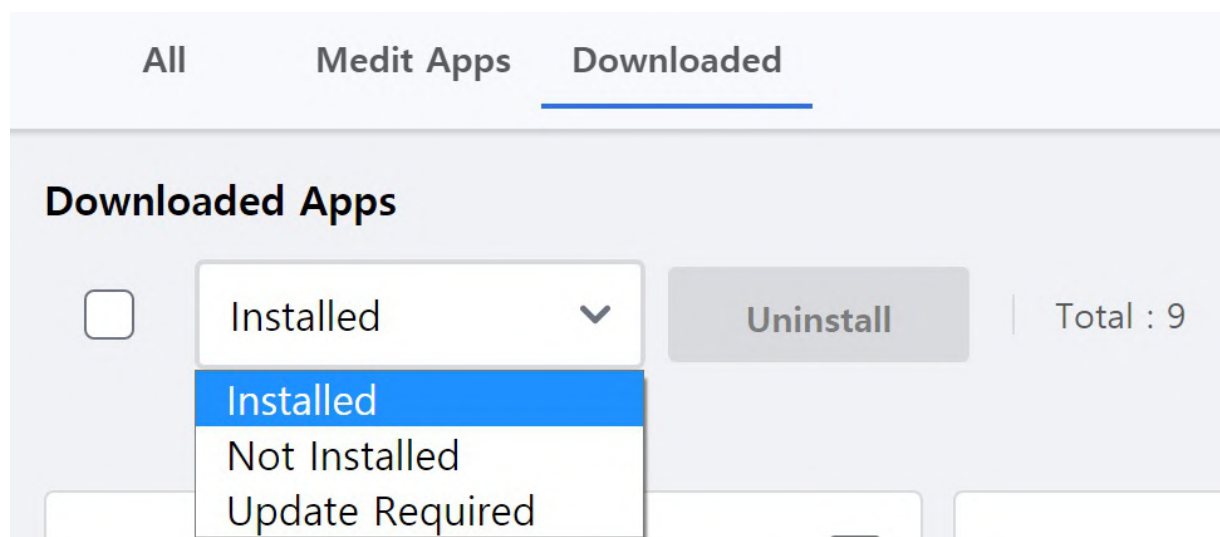

- **Installata:** l'opzione mostra solo le applicazioni installate sul PC a cui l'utente è attualmente registrato.
- **Non installata:** l'opzione consente di visualizzare le applicazioni installate su altri PC in modo da poterle installare rapidamente.
- **Aggiornamento necessario:** l'opzione mostra solo le applicazioni installate sul PC corrente che necessitano di aggiornamento.

Trash Box

Trash Box memorizza temporaneamente i casi eliminati. Tutti i casi presenti in Trash Box possono essere ripristinati o eliminati definitivamente.

Attenzione

I dati eliminati da Trash Box verranno cancellati definitivamente dal PC e dal server e non potranno essere ripristinati.

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi

Lo Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi aiuta a caricare e scaricare i casi in modo efficiente. È possibile caricare più casi sul cloud o scaricarli sul PC locale. Per identificare i casi che richiedono la sincronizzazione, è sufficiente cercarli o applicare i filtri per data.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Close

Upload

 Upload	Carica i casi selezionati.
 Cancel	Annulla il caricamento dei casi selezionati.
 Retry	In caso di errore, consente di provare a caricare nuovamente i casi.

Download

 Download	Scarica i casi selezionati.
 Cancel	Annulla il download dei casi selezionati.
 Retry	In caso di errore, consente di provare a scaricare nuovamente i casi.

Siti web correlati

È possibile accedere direttamente ai menu disponibili solo su Medit Link Web, come My Info, Partners e Membership. Per una descrizione dettagliata dei menu di Medit Link Web, fare riferimento a Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) e [My Info](#).

È possibile accedere allo store online di Medit, Medit Shop, dove si possono acquistare garanzie estese per gli scanner e altri prodotti Medit, come gli zaini per scanner.

È inoltre possibile ricevere informazioni sull'utilizzo di Medit Link. Accedere alle risorse educative e informative di Medit, come Medit Help Center, il canale YouTube di Medit Academy e la piattaforma di formazione online Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Visualizzatore file

Visualizzatore file raggruppa e mostra diversi dati, compresi i dati acquisiti da programmi collegati a Medit Link e i dati allegati dagli utenti.



Fornisce funzioni di gestione di base, come mostra/nascondi i dati, regola l'opacità ed elimina i dati.

Supporta anteprime dei file nei seguenti formati:

- dati 3D: STL, OBJ, PLY
- immagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- File video: MKV, MP4, AVI, WMV

Albero dei dati

È possibile raggruppare e visualizzare tutti i dati del caso nell'albero dei dati. È inoltre possibile mostrare/nascondere i dati, regolare la trasparenza ed eliminare i dati dall'albero dei dati.

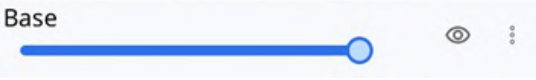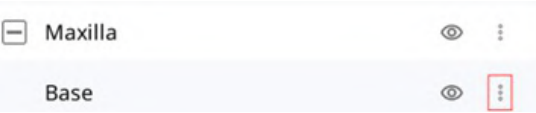
	Mostra/Nascondi	Consente di mostrare o nascondere i dati.
	Opacità	La barra di scorrimento viene visualizzata quando si clicca su uno dei dati nell'albero dei dati. È possibile regolare l'opacità dei dati visualizzati spostando la barra di scorrimento. 
	Più	Cliccando sull'icona Altro vengono mostrate le funzionalità aggiuntive disponibili.  • Mostra solo questo: nasconde tutti gli altri dati ma mostra solo quelli corrispondenti. • Nascondi: nasconde i dati. • Duplica: copia i dati e li aggiunge al gruppo di allegati. • Esporta: esporta i file selezionati. • Rinomina: modifica il nome dei dati. • Elimina: elimina i dati.



Nota

È possibile rinominare i dati quando si è online.

Strumenti di controllo del modello

Controlli del modello 3D

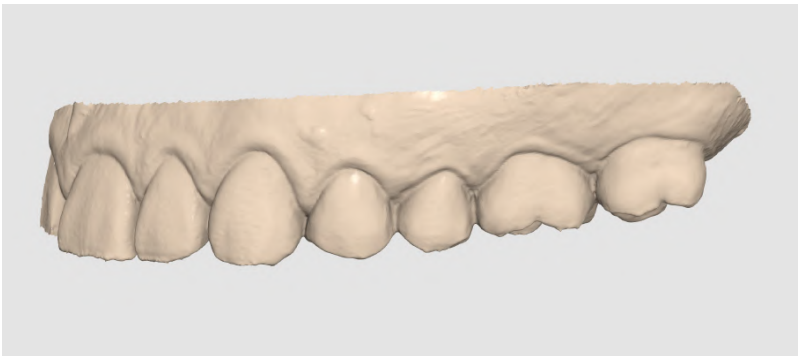+	Panoramica	Muove il modello.
↻	Ruota	Ruota il modello.
🔍	Ingrandisci/riduci lo zoom	Ingrandisce o riduce lo zoom sul modello.
🔍	Adatta lo zoom	Posiziona il modello al centro della schermata.
🌈	Modalità di visualizzazione dei dati	Lucido Consente di visualizzare i dati a colori con finitura lucida (rendering PBR). 
🌈		Opaco Consente di visualizzare i dati a colori con finitura opaca (rendering Phong). 
●		Monocromatico Consente di visualizzare i dati in un solo colore. 

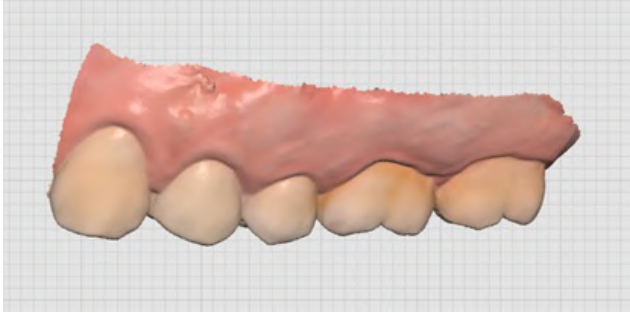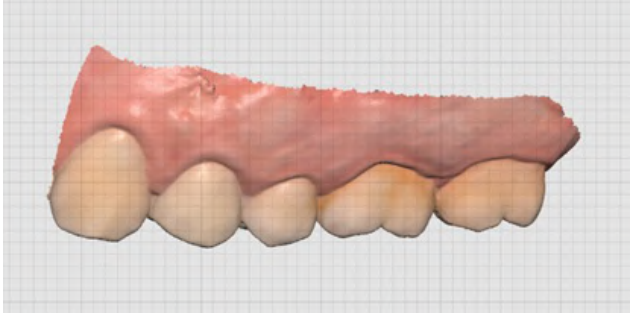	Impostazioni griglia (mm)	Griglia On	Mostra la griglia sullo sfondo. 
		Griglia Off	Nasconde la griglia sullo sfondo.
		Sovrapposizione On	Sovrappone la griglia al modello. 

Controllo delle immagini 2D


	Immagine precedente/successiva	Consente di spostarsi tra le immagini.
	Modifica	Consente di modificare l'immagine.
 	Stringi/incolla finestra	È possibile staccare la finestra dell'immagine e regolarla nella posizione desiderata. È inoltre possibile ridimensionare la finestra. Quando la finestra viene ripristinata nella sua posizione originale, torna alla dimensione predefinita.

Strumenti di funzione

Acquisizione delle immagini e Promemoria


Consente di acquisire la schermata attuale come immagine 2D, disegnarci sopra o aggiungere note.


È possibile salvarla come file con le note e inviarla come riferimento.

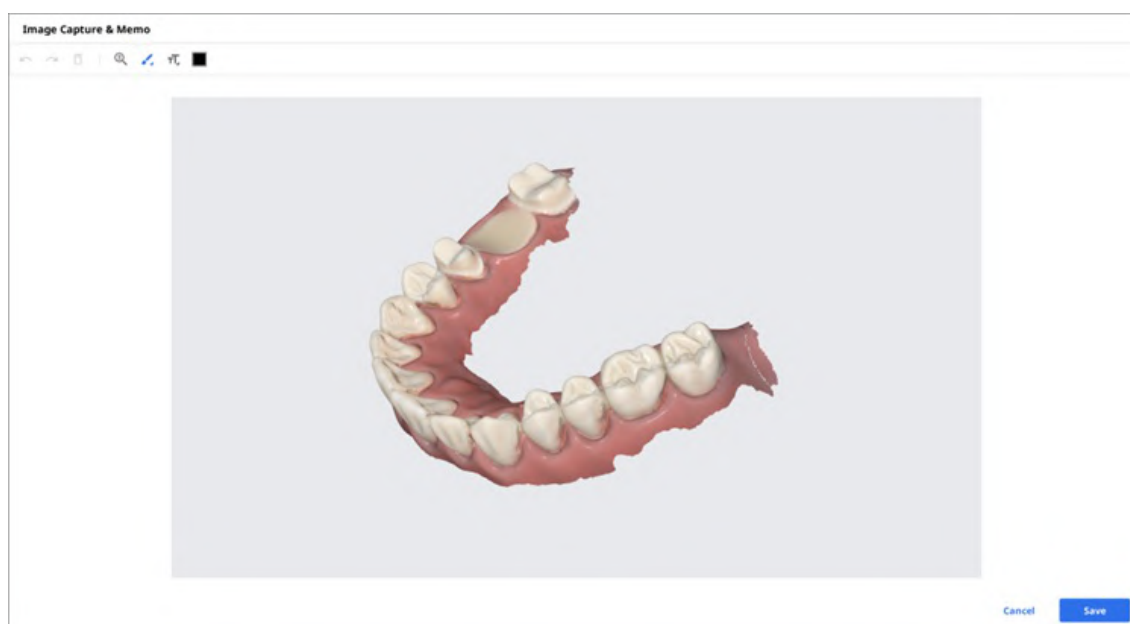

Acquisizione ortodontica

Consente di acquisire le immagini nell'attuale direzione di visualizzazione e in alto/in basso/a sinistra/a destra dell'attuale direzione di visualizzazione.

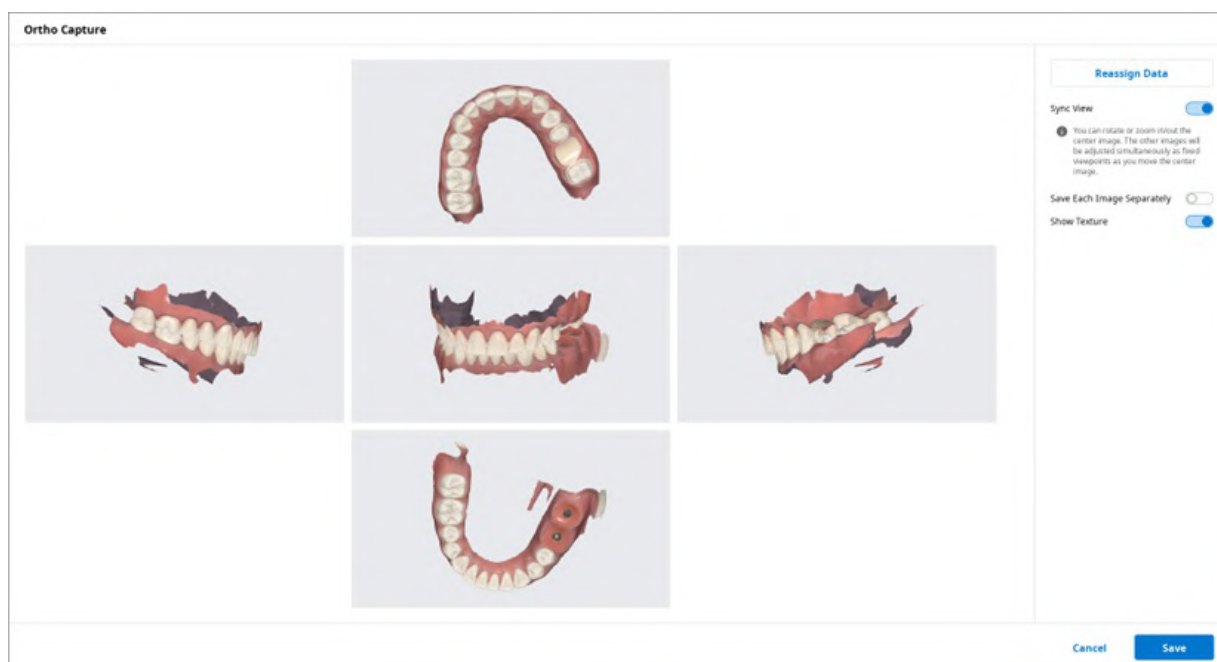

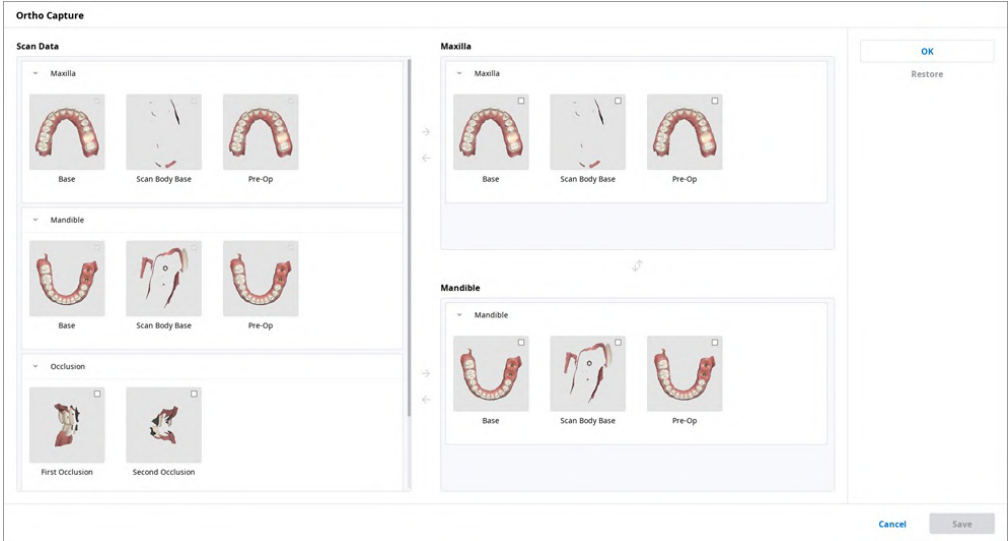Sincronizza la vista	Quando questa opzione è attiva, è possibile ruotare o ingrandire/ridurre lo zoom sull'immagine centrale. Le altre immagini verranno regolate simultaneamente come punti di vista fissi man mano che si sposta l'immagine centrale. Quando questa opzione è disattivata, è possibile eseguire la panoramica, ruotare o ingrandire/ridurre lo zoom su tutte le immagini singolarmente.
Salva separatamente ogni immagine	Consente di salvare ogni immagine in alta risoluzione.
Mostra la texture	Attiva/disattiva la texture per il modello.
Riassegna i dati	Modificare i dati per la mascella/mandibola con la funzione Riassegna i dati. È possibile utilizzare i dati modificati per creare e utilizzare le immagini dei risultati di Acquisizione ortodontica.  • Dati di scansione: vengono visualizzati tutti i dati di scansione per il caso. • Mascella: vengono visualizzati i dati selezionati per la mascella. • Mandibola: vengono visualizzati i dati selezionati per la mandibola.


Riempi i vuoti

Consente di riempire i vuoti nei dati mesh 3D.



Ritaglio


La funzione Ritaglio fornisce diversi strumenti per modificare i dati.

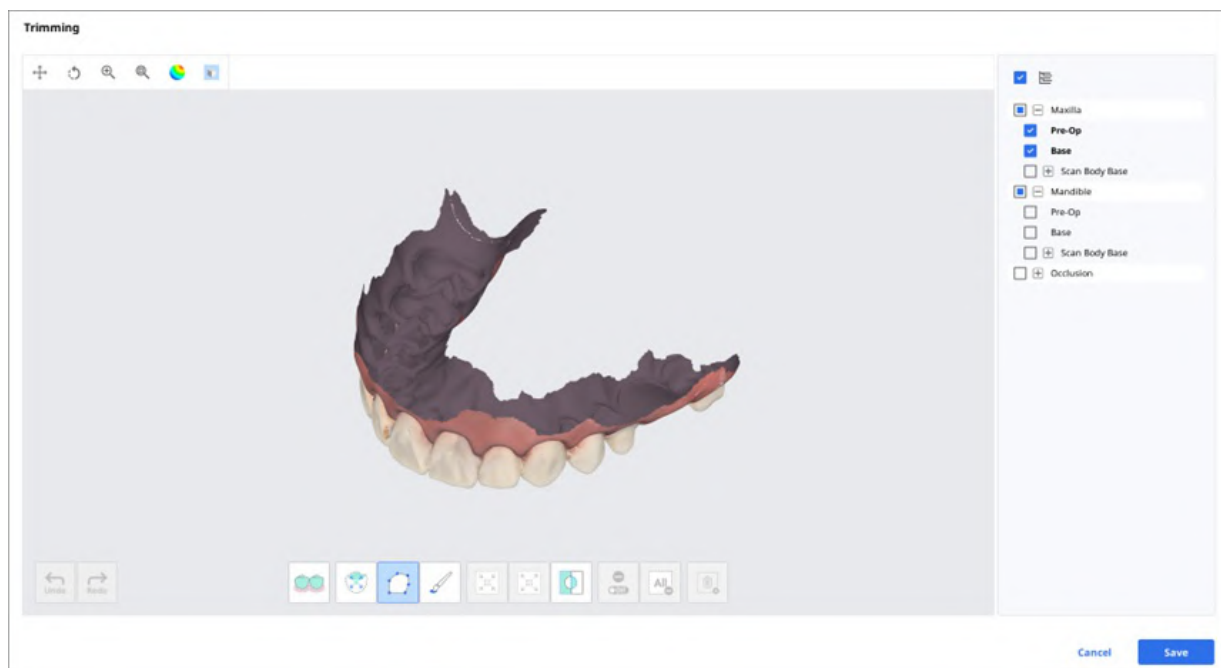

I dati mesh 3D selezionati possono essere modificati attraverso strumenti diversi situati nella parte inferiore della finestra.

Selezione		Selezione intelligente dei denti	Seleziona automaticamente tutti i denti dell'arcata tralasciando le parti della gengiva.  Nota Questa funzione è disponibile esclusivamente per i dati di scansione acquisiti tramite Medit Scan for Clinics con l'opzione "Usa GPU" attiva.
		Selezione intelligente del singolo dente	Consente di selezionare automaticamente l'area di un singolo dente con un clic. È possibile cliccare o trascinare sul dente.
		Selezione polilinea	Seleziona tutte le entità comprese all'interno di una polilinea disegnata sulla schermata.
		Selezione pennello	Seleziona tutte le entità presenti su un percorso disegnato a mano libera sulla schermata. Verrà selezionata solo la parte anteriore. Il pennello è disponibile in tre diverse dimensioni.
Regolazione dell'area selezionata		Restringi l'area selezionata	Consente di ridurre l'area selezionata ogni volta che si clicca sul pulsante.
		Espandi l'area selezionata	Consente di espandere l'area selezionata ogni volta che si clicca sul pulsante.
		Inverti l'area selezionata	Consente di invertire la selezione.
Deselezione		Seleziona/Deseleziona	Quando questa opzione è attiva, consente di deselezionare l'area utilizzando vari strumenti.
		Deseleziona tutto	Consente di deselezionare tutte le aree selezionate.
		Elimina l'area selezionata	Consente di eliminare i dati dall'area selezionata.

1. Selezionare l'area che si desidera ritagliare con gli strumenti di selezione dell'area.

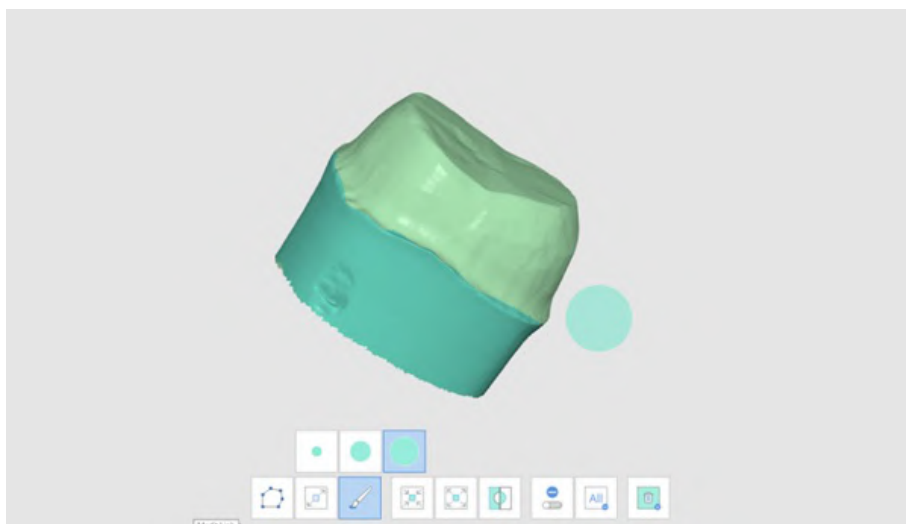


Nota


Lo strumento di ritaglio polilinea seleziona tutte le entità comprese all'interno di una polilinea disegnata sulla schermata, mentre il pennello seleziona solo i dati della parte anteriore.

2. È possibile invertire, restringere o espandere la selezione con i seguenti tre strumenti.


- Inverti l'area selezionata

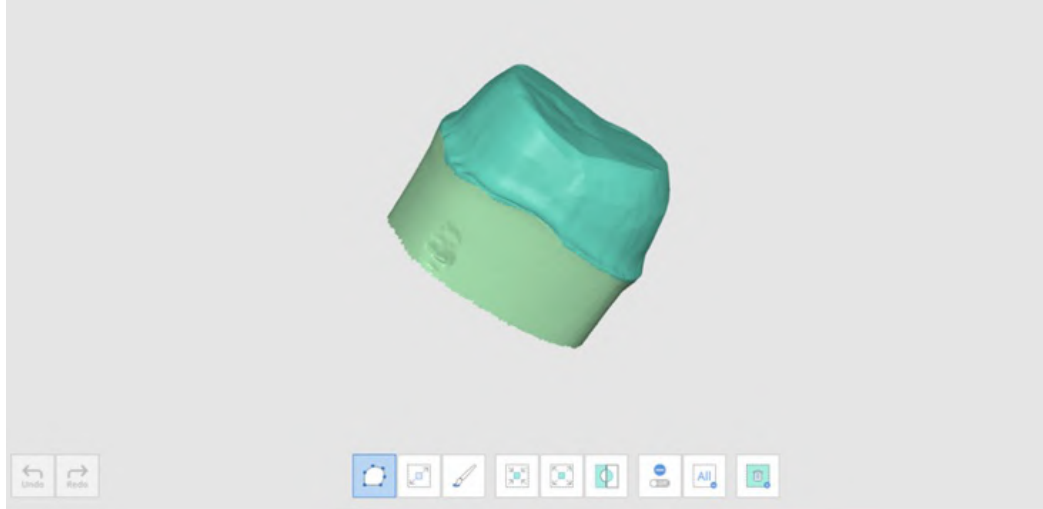

- Restringi l'area selezionata

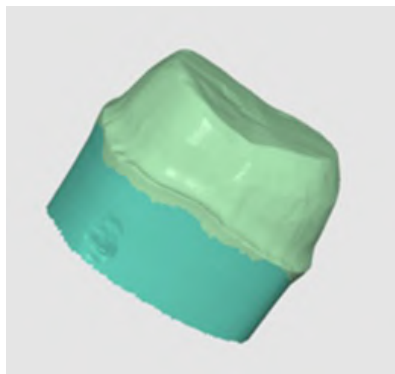


- Espandi l'area selezionata

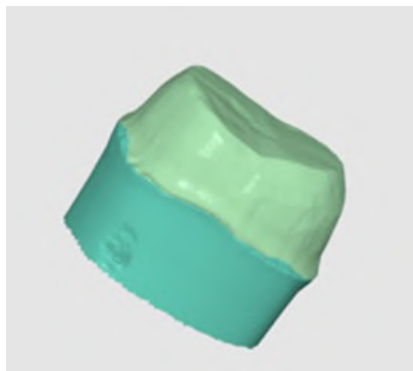



3. È possibile deselectionare le aree selezionate con lo strumento Elimina l'area selezionata.

Ottimizza l'allineamento dell'occlusione

Consente di ottimizzare l'allineamento dell'occlusione. È possibile scegliere i dati target e regolare l'allineamento dell'occlusione.

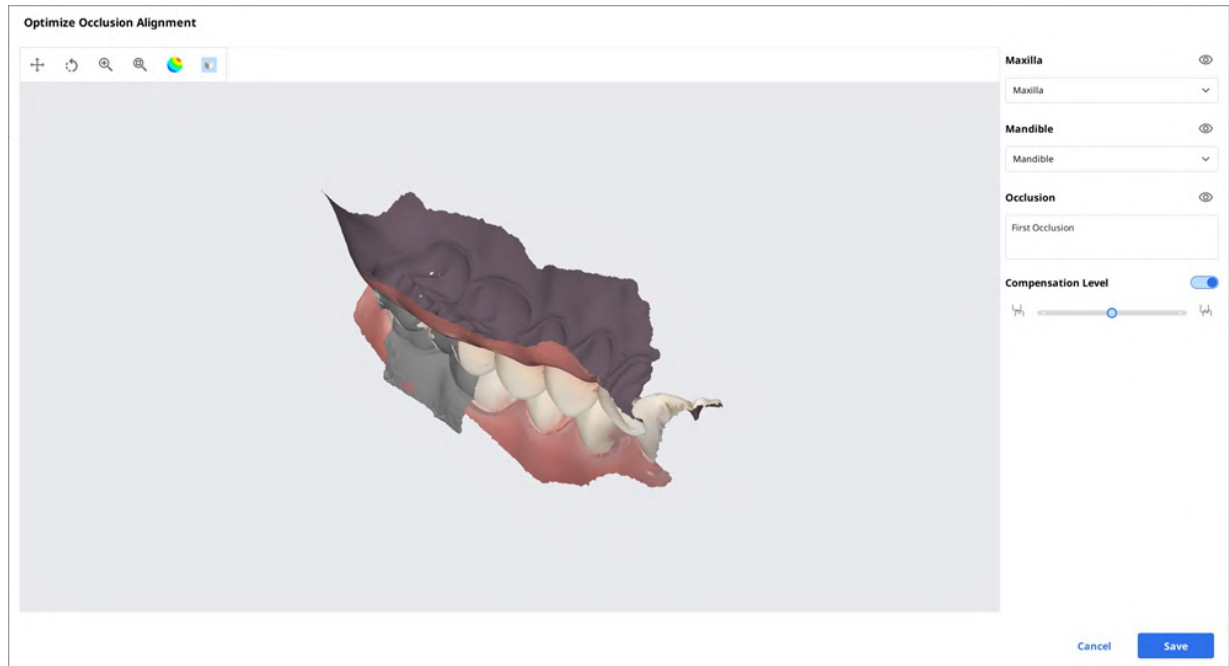


Livello di compensazione

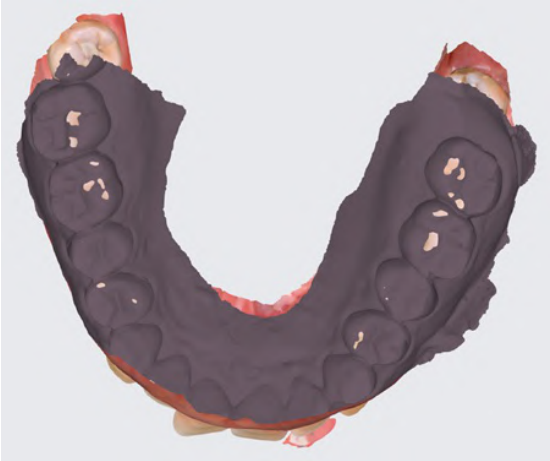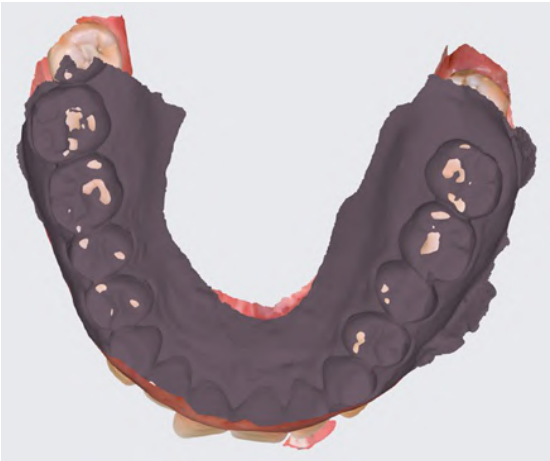Basso	Compensation Level    	
Medio	Compensation Level    	
Alto	Compensation Level    	
Off	Compensation Level    	

Movimento mandibolare

È possibile riprodurre i movimenti mandibolari registrati in Medit Scan for Clinics per visualizzare i contatti occlusali dinamici tra la dentatura superiore e quella inferiore.

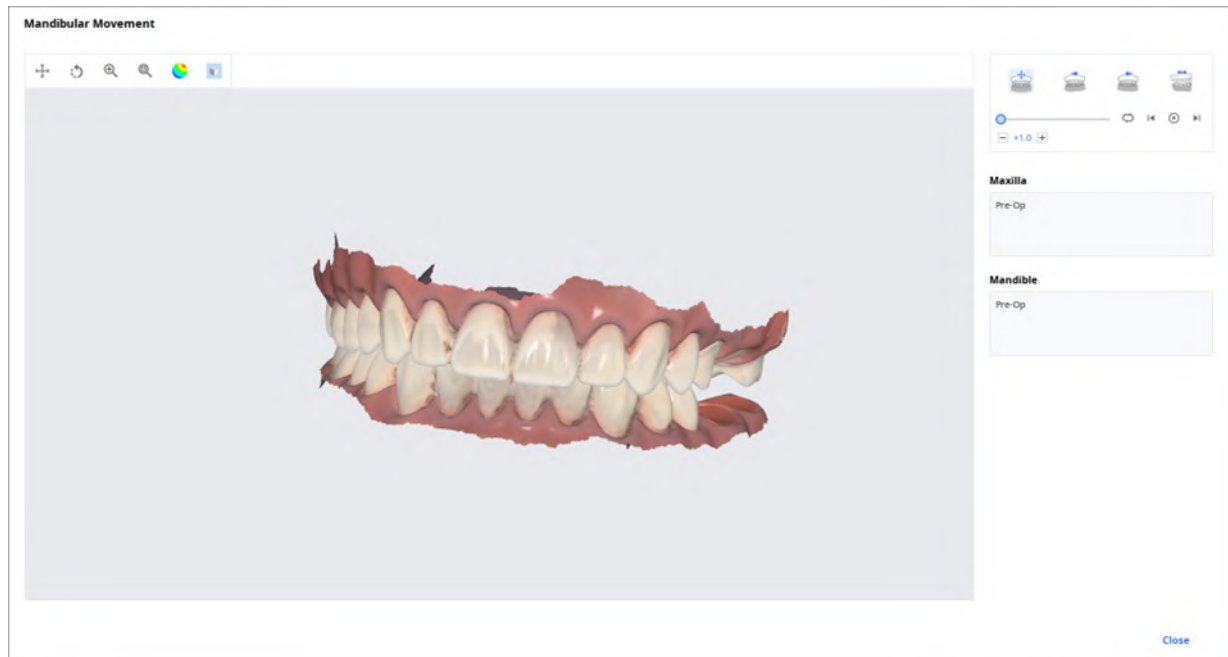

	Movimento libero	Consente di riprodurre la registrazione del movimento mandibolare libero.
	Movimento laterale sinistro	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola verso sinistra.
	Movimento laterale destro	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola verso destra.
	Movimento protrusivo	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola in avanti.

Gestire i dati dell'occlusione multipla nel visualizzatore file

È possibile ottenere più risultati di dati di occlusione dall'applicazione Medit Scan.

Medit Link mette a disposizione dell'utente la funzione per gestire i risultati tramite il "Visualizzatore file".

Come gestire più risultati


Quando l'utente ottiene più risultati di occlusione da Medit Scan for Clinics, Medit Link offre la possibilità di selezionare un risultato.

I risultati sono elencati per nome ed è possibile selezionare un elemento.

Il modello selezionato verrà mostrato in "Albero dei dati" e "Area di visualizzazione del modello".



È possibile comprimere l'elenco e modificare l'elemento utilizzando le icone delle frecce.

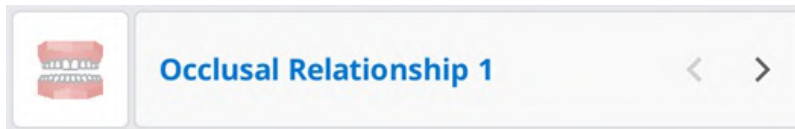

Opzioni di visualizzazione

È possibile modificare le opzioni di visualizzazione per personalizzare i layout dell'elenco dei casi in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

	Status Filters	2 in use >
	Table Items	8 in use >
	View Type	List View >
	Grouping	None >
	Sorting	Last Modified Date >

Filtri di stato

Mostra o nasconde ogni filtro che rappresenta lo stato del caso. I filtri di stato nascosti non vengono mostrati sulla schermata in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Con i filtri di stato, è possibile trovare facilmente il caso di cui si necessita.

- È possibile cliccare sullo stato che si desidera visualizzare per vedere solo i casi in quello stato.
- È possibile selezionare più stati alla volta.

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di filtraggio:

Box	Filtri di stato
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Voci della tabella

Selezionare le voci da mostrare nell'elenco dei casi in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. È possibile modificare l'ordine delle voci della tabella o regolare la larghezza della colonna nella vista elenco per ottimizzarla all'ambiente dell'utente.

Ogni box dispone delle seguenti voci di tabella:

Box	Voci della tabella
Patient	Nome del paziente / ID del paziente / Sesso / Numero di casi / Data di registrazione / Data di nascita / Data dell'ultima scansione
Case Box	Stato / Nome del caso / Data di nascita / Informazioni del modulo / Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
Order Box	Stato / Nome del caso / Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Data di consegna richiesta / Ultima modifica
In Box	Stato / Nome del caso / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Ultima modifica / Nome della clinica
Work Box	Stato / Nome del caso / Nome del paziente / Informazioni del modulo / Ultima modifica / Data di consegna richiesta / Data di scansione / Nome della clinica / Data dell'ordine

Tipo di vista

Consente di cambiare il tipo di vista, scegliendo tra Vista galleria e Vista elenco in Case Box.

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di visualizzazione:

Box	Opzioni di visualizzazione
Patient	Vista elenco
Case Box	Vista Elenco / Vista galleria
Order Box	Vista Elenco
In Box	Vista Elenco
Work Box	Vista Elenco

Raggruppamento

Consente di selezionare un'opzione di raggruppamento per classificare e riorganizzare i casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di raggruppamento:

Box	Opzioni di raggruppamento
Case Box	Nessuno / Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine
Order Box	Nessuno / Data di scansione / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta
In Box	Nessuno / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta
Work Box	None / Data di consegna richiesta



Le opzioni di raggruppamento non sono disponibili in Patient, Case Talk e Trash Box.

Ordinamento

Consente di selezionare un'opzione di ordinamento per modificare l'ordine dei casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di ordinamento:

Box	Raggruppamento	Opzioni di ordinamento
Patient	-	Nome del paziente / ID del paziente / Data di nascita / Data di registrazione / Numero di casi / Data dell'ultima scansione
Case Box	Nessuna	Nome del paziente / Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Nome del paziente	Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Data di scansione	Nome del paziente / Ultima modifica / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Data dell'ordine	Nome del paziente / Ultima modifica / Data di scansione / Nome del laboratorio
Order Box	Nessuna	Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio
	Data di scansione	Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio
	Data dell'ordine	Nome del paziente / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
In Box	Nessuna	Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data dell'ordine	Nome del paziente / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data dell'ordine / Nome della clinica
Work Box	Nessuna	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Nome della clinica




Le opzioni di ordinamento non sono disponibili Case Talk e Trash Box.

Filtro e cerca

Filtro per paziente

Consente di filtrare e visualizzare i casi per nome del paziente. È possibile creare un elenco filtrando esclusivamente i pazienti su cui è necessario lavorare.

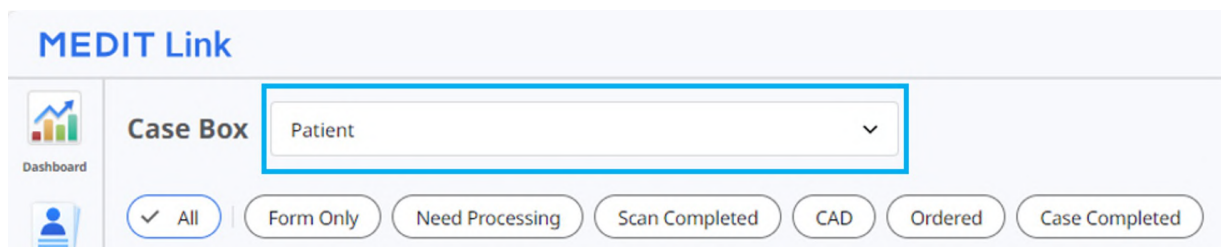


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Inserire il nome del paziente.

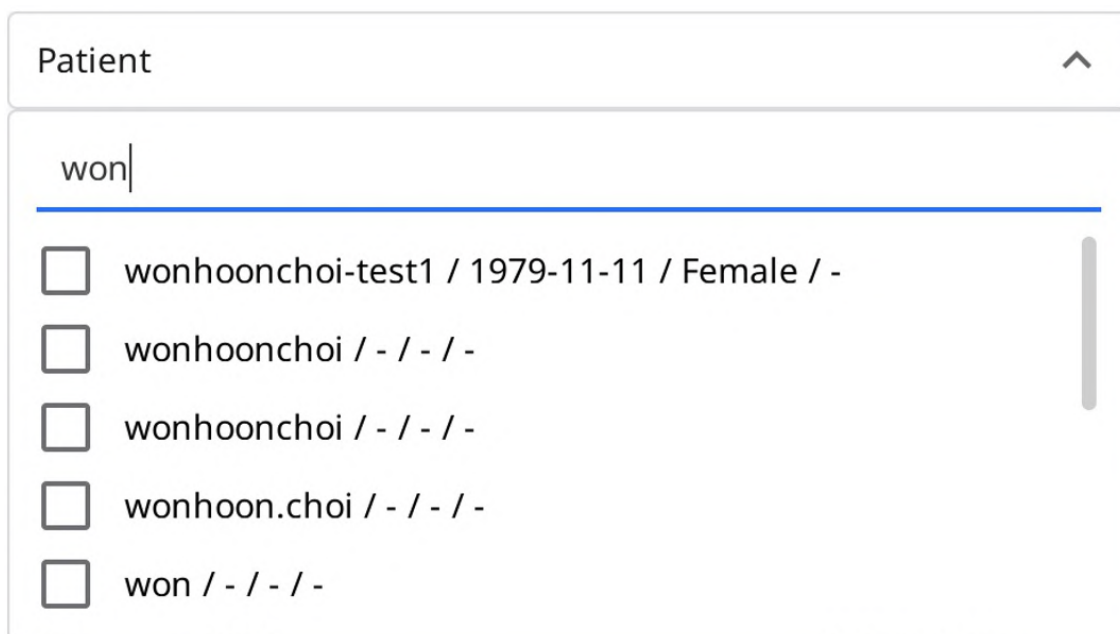

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selezionare i pazienti tra i risultati della ricerca, come mostrato di seguito.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Nell'elenco vengono visualizzati solo i casi dei pazienti selezionati.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

View Options

Total Cases: 20

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtro per data

Consente di filtrare e visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro la durata impostata.

1. Cliccare sul filtro durata.

2020-08-10 ~ 2020-09-09


2. Selezionare la durata dall'elenco.

- Tutto: mostra tutti i casi.
- Intervallo personalizzato: consente di specificare le date di inizio e fine per visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro quel periodo.
- Oggi: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta il giorno corrente.
- Ieri: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta il giorno prima.
- Ultimi 7 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta negli ultimi 7 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 30 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta negli ultimi 30 giorni, escluso il giorno corrente.
- Mese corrente: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta durante il mese corrente.
- Mese precedente: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta durante l'ultimo mese.

L'elenco dei casi verrà aggiornato in tempo reale con i casi creati o modificati per l'ultima volta entro la durata selezionata.

Funzionalità di ricerca avanzata


Consente di sfruttare le funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le informazioni desiderate.

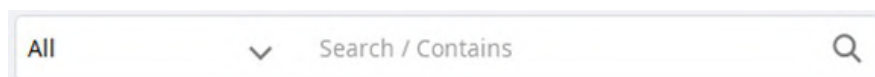A search bar with a dropdown menu currently showing 'All'. To the right of the dropdown is the text 'Search / Contains' and a magnifying glass icon.

Per ogni box sono disponibili i seguenti criteri di ricerca:

Patient	Tutto, Nome del paziente, ID del paziente
Case Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Informazioni del modulo, Nome del laboratorio
Order Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Nome del laboratorio, ID dell'ordine
In Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, ID dell'ordine
Work Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Informazioni del modulo, Nome della clinica, ID dell'ordine
Case Talk	Nome del Case Talk (contiene), Nome del paziente (uguale a)
Trash Box (Clinica)	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome del laboratorio, Eliminato da
Trash Box (Laboratorio)	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, Eliminato da

È possibile selezionare i criteri di ricerca e scegliere tra le logiche Contiene e Uguale a.

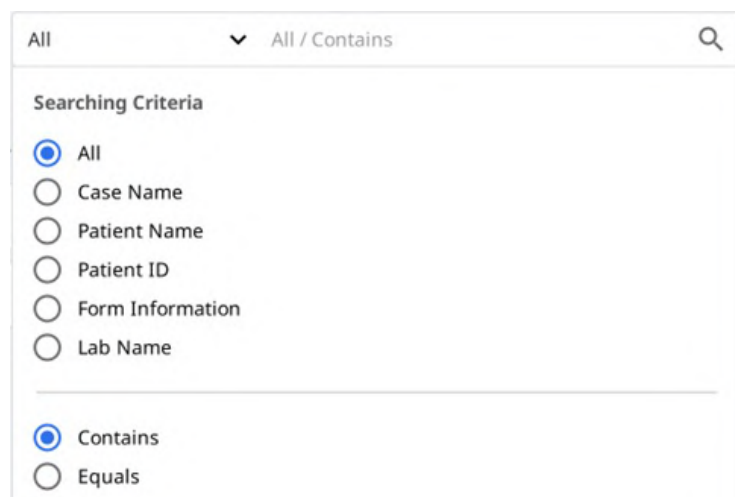
A dialog box titled 'Searching Criteria'. It has two sections. The first section lists search criteria: 'All' (selected with a blue radio button), 'Case Name', 'Patient Name', 'Patient ID', 'Form Information', and 'Lab Name'. The second section lists search logic: 'Contains' (selected with a blue radio button) and 'Equals'.

Creare/modificare/clonare/eliminare il caso

Creare i casi

Creare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sul pulsante "Nuovo caso" nell'angolo in alto a destra.

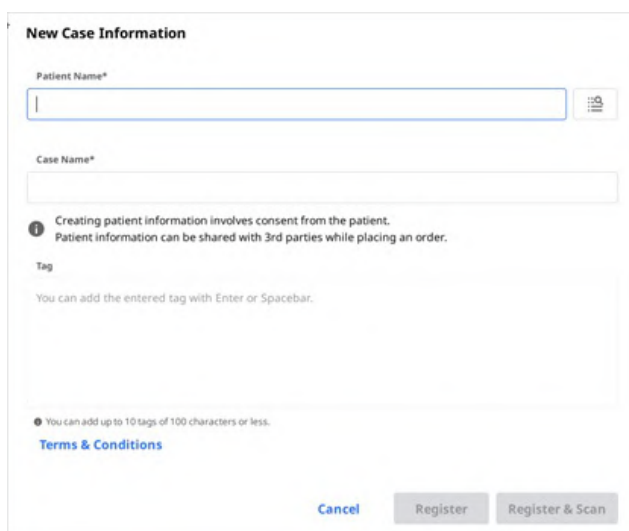

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Inserire le informazioni di base, come il nome del paziente e il nome del caso.
 - Qualora si inserisca un nome non presente nell'elenco dei pazienti, verrà aggiunto un nuovo paziente.
 - Se invece si inserisce un nome presente nell'elenco dei pazienti, sarà possibile selezionarlo dall'elenco.
 - Se si registra un caso per un paziente esistente, cliccare sull'icona Elenco pazienti per selezionare un paziente esistente.



- Nella finestra di dialogo Elenco pazienti, è possibile registrare un nuovo paziente o modificare le informazioni relative a un paziente esistente.

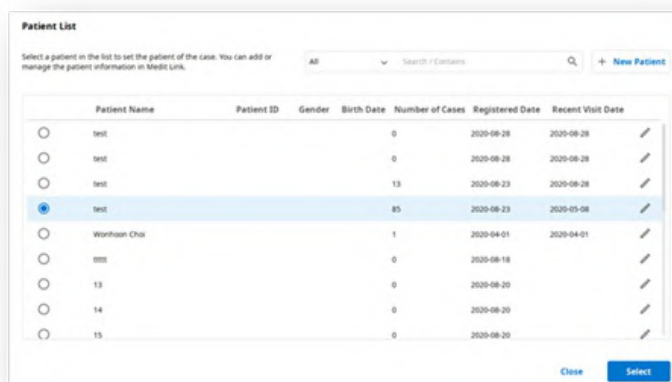

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test	85			85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		


Close Select

3. Il nome del caso verrà compilato automaticamente, ma è comunque possibile modificarlo.
4. Cliccare su "Registra & scansiona" per completare la registrazione del caso e procedere alla scansione.

- **Registra:** si verrà reindirizzati alla pagina principale. Utile quando si registrano più casi.
- **Registra & scansiona:** consente di passare alla scheda Modulo per registrare le informazioni del modulo per il caso.

Creare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sul pulsante "Nuovo caso" nell'angolo in alto a destra.

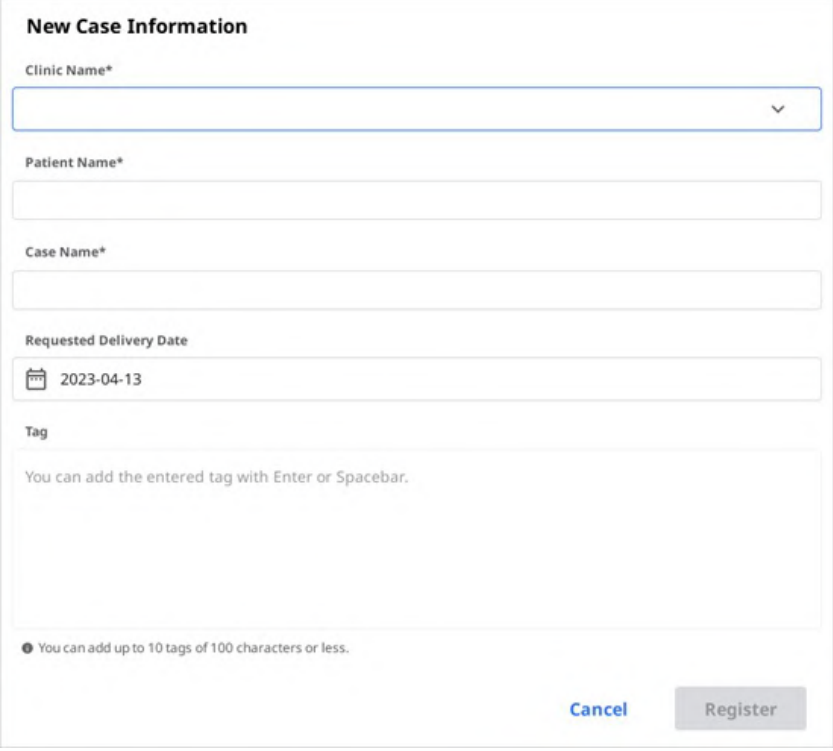

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name*:** A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name*:** A text input field.
- Case Name*:** A text input field.
- Requested Delivery Date:** A date picker showing "2023-04-13".
- Tag:** A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." Below it, a small note states: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons:** "Cancel" and "Register" buttons at the bottom right.

2. Inserire o selezionare il nome della clinica.
3. Inserire il nome del paziente e il nome del caso. Il nome del caso verrà compilato automaticamente, ma è comunque possibile modificarlo.
4. Inserire la data di consegna prevista considerando la data di completamento del lavoro.
5. Dopo aver registrato il caso, si verrà reindirizzati alla pagina principale.

Modificare i casi

Modificare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sull'icona "Modifica" accanto al nome del caso.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

2. Cliccare sull'icona "Cerca" per modificare il nome del paziente. Si tenga presente che non è possibile modificarlo direttamente; invece, è possibile cercare il nome di un paziente con cui si desidera sostituire quello attuale e modificare le informazioni relative al paziente dall'elenco.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Visualizzare il nome del paziente con cui si desidera sostituire quello attuale.
4. Cliccare sul pulsante "Nuovo paziente" per creare un nuovo paziente.
5. Utilizzare il pulsante "Modifica" per modificare le informazioni registrate relative al paziente.
6. Cliccare su "Applica" per completare il processo.

Modificare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Modifica" accanto al nome del caso.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Cliccare su "Applica" una volta completata la modifica.



Non è possibile modificare le informazioni dei casi ricevuti tramite l'ordine in In Box.

Clonare i casi

Clonare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sull'icona "Clona" in alto.



2. Verrà chiesto che genere di informazioni si desidera clonare nel nuovo caso.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Scegliere se replicare solo le informazioni del modulo o tutti i dati.
4. Una volta completata la clonazione, verrà creato un caso denominato "[Nome del caso] – Clone".

Clonare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Clona" in alto.



2. Duplicare tutti i dati per creare un nuovo caso.
3. Una volta completata la clonazione, verrà creato un caso denominato "[Nome del caso] – Clone".


Eliminare i casi

Eliminare un caso (Clinica e Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Elimina".



2. Cliccare su "OK" per eliminare il caso.

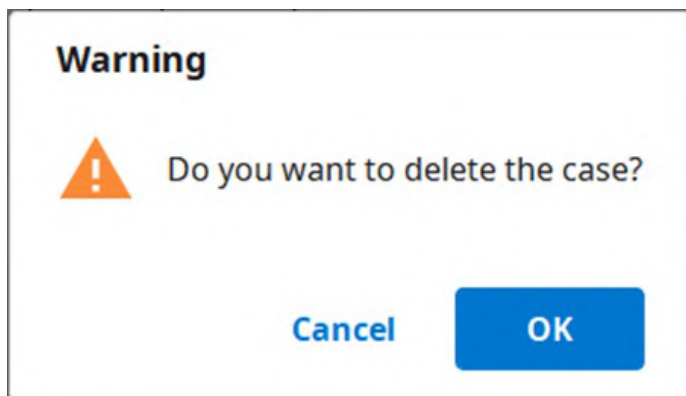

3. I casi eliminati vengono spostati in Trash Box e possono essere ripristinati, se necessario.

Informazioni del modulo

È possibile inserire le informazioni del modulo in base al programma collegato e al tipo di trattamento.

Le informazioni inserite verranno utilizzate come informazioni di base per operare su programmi di scansione o CAD e per ordinare.

Registrazione delle informazioni del modulo in Case Box

Inserire nella scheda Modulo

1. Scegliere se inserire le informazioni sul trattamento per denti o per arcata.
2. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Se le informazioni sono state inserite in modo errato, tornare indietro e selezionarle nuovamente.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco degli ordini.
3. Cliccare su "Salva" per salvare la registrazione.

Registrazione delle informazioni del modulo in Work Box

Inserire nella scheda Modulo


1. Selezionare il programma di scansione che si desidera utilizzare.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni che definiranno la strategia di scansione: Denti/Multi-die flessibile/Multi-die.
3. I metodi potrebbero differire a seconda del programma di scansione selezionato.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Denti	☐	☐
Arcata	☐	☐
Multi-die flessibile	☒	☐
Multi-die	☒	☐

4. Selezionare i numeri di denti, arcate o stampi per il processo di scansione.
5. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Se le informazioni sono state inserite in modo errato, tornare indietro e selezionarle nuovamente.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco.
6. Cliccare su "Salva" per salvare la registrazione.

Collegare i denti nel ponte

È possibile collegare più denti in un ponte quando viene applicato lo stesso materiale a più denti adiacenti. Fare clic sull'icona del ponte accanto ai denti selezionati per collegarli o distaccarli.

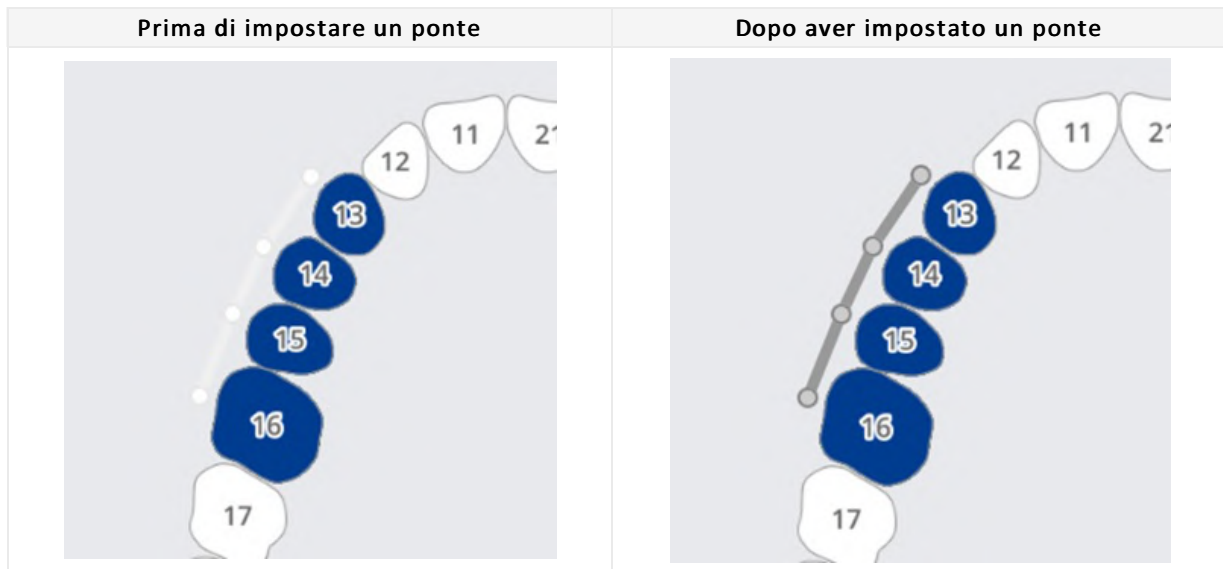

Impostare le opzioni di scansione

A seconda del programma con cui si sta lavorando, sono disponibili diverse opzioni di scansione.

Le opzioni di scansione selezionate vengono trasferite a ciascun programma di scansione.

Medit Scan for Labs

Opzioni generali

	Denti adiacenti	Consente di contrassegnare i denti preparati e adiacenti e trasferisce queste informazioni al programma di scansione.
	Antagonista	Contrassegna automaticamente l'antagonista e trasmette questa informazione al programma di scansione.
	Articolatore	Mostra le opzioni per selezionare l'articolatore nel programma di scansione.
	Indicatore di movimento	Consente di utilizzare la strategia di scansione "Movimento mascellare" nel programma di scansione.

Opzioni per denti

	Scan body	Consente di impostare una strategia per la scansione degli scan body nel programma di scansione.
	Scansione preoperatoria	Consente di impostare una strategia per la scansione di un modello preoperatorio nel programma di scansione.
	Scansione della ceratura	Consente di impostare una strategia per la scansione delle cerature nel programma di scansione.

Aggiungere ai preferiti

È possibile selezionare rapidamente un prodotto registrandolo come preferito.

L'elenco dei preferiti registrati è gestito come modello e può essere condiviso tramite le funzioni di esportazione e importazione.

Aggiungere ai preferiti

1. Selezionare il numero del dente.
2. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità possono essere registrati come preferiti anche se non sono tutti selezionati.
3. Cliccare sull'icona a forma di stella.

4. Nell'elenco di ricerca dei preferiti sarà presente una combinazione dei parametri selezionati, escluso il numero del dente.

Gestire i modelli dei preferiti

È possibile registrare, gestire e condividere diversi tipi di modelli.

Aggiungi	Aggiunge un nuovo modello.
Rinomina	Rinomina il modello corrente.
Elimina	Elimina il modello corrente.
Esporta	Esporta il modello corrente in un file.
Importa	Importa un file di modello.

Lavorare su scansione/CAD

Processo di scansione

In base alle informazioni inserite, procedere con la scansione.

1. Inserire/salvare le informazioni sul trattamento e selezionare le opzioni di scansione necessarie.
2. Cliccare sul pulsante "Scansiona" nell'angolo in alto a destra della finestra.

Processo CAD


Medit Link fornisce l'app di integrazione DentalCAD per collegare Medit Link a DentalCAD.

1. Installare l'app DentalCAD Integration presente nell'App Box.
2. Accedere ai dettagli del caso e cliccare sull'icona dell'app DentalCAD Integration nel Quick Launcher.
3. Specificare il percorso dell'app DentalCAD installata sul PC nella finestra di dialogo pop-up.
4. Inserire i dettagli del caso scansionato e cliccare sull'icona dell'app DentalCAD Integration, che aprirà una finestra di dialogo per creare un file dentalProject.
5. Registrare le informazioni del modulo per DentalCAD e cliccare su "Apri" per aprire il programma CAD.
6. Se si installa l'app DentalDB Integration, i risultati CAD verranno automaticamente inviati al percorso di salvataggio specificato in exocad (solo account Laboratorio).


Utilizzare le applicazioni add-in

Add-in Quick Launcher

È possibile eseguire direttamente varie applicazioni add-in cliccando sulle icone delle app installate nel Quick Launcher. È possibile cambiare l'ordine delle icone delle app trascinandole.

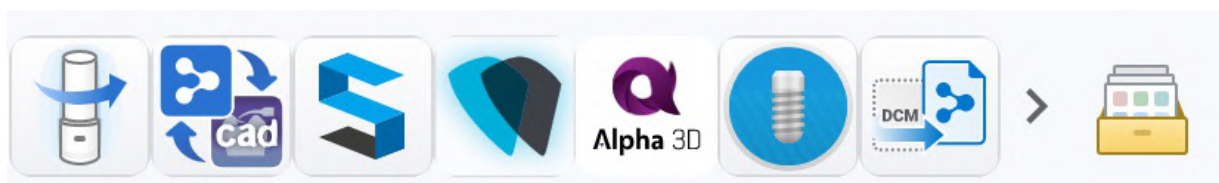

Gestione del launcher di app

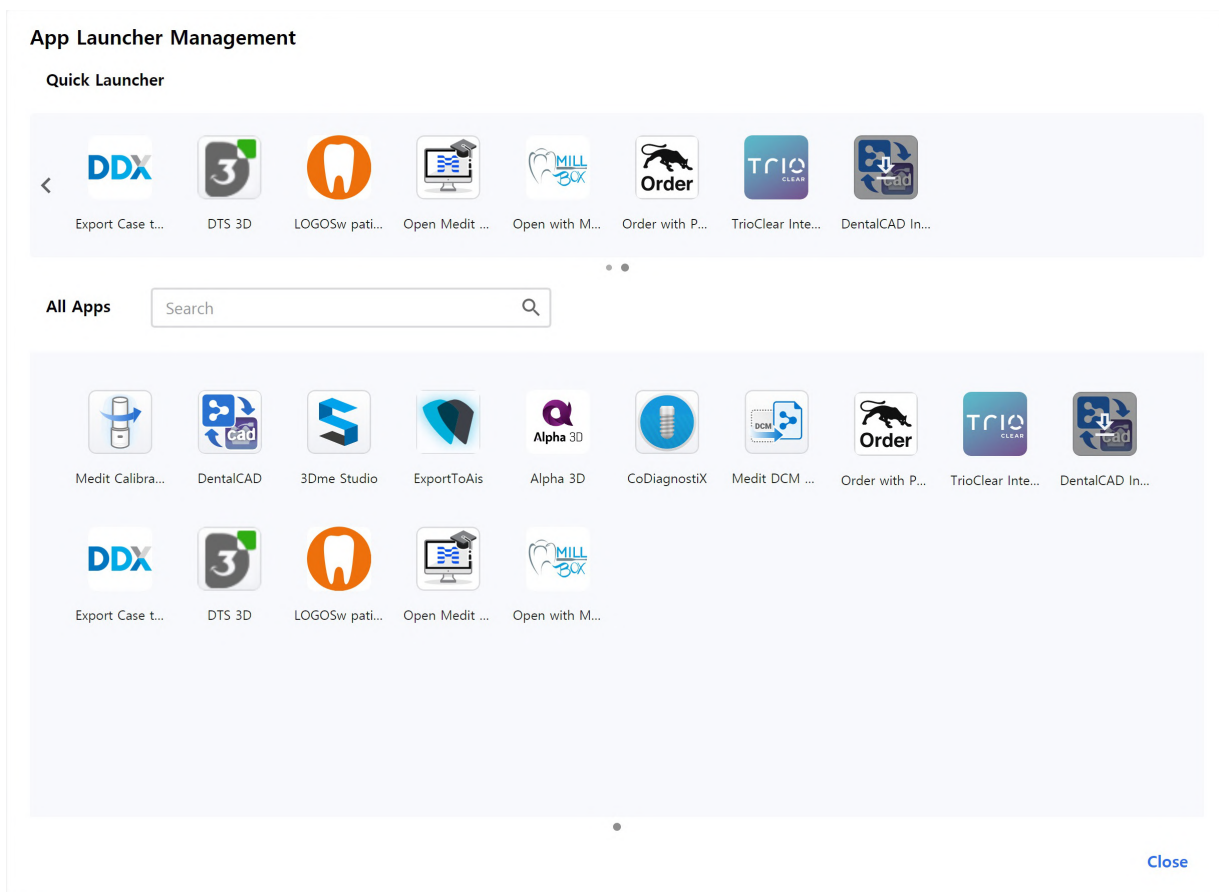

Quick Launcher

È possibile definire le app da visualizzare nel Quick Launcher. L'utente può cambiare l'ordine delle icone delle app trascinandole, oppure creare cartelle per raggruppare app simili e organizzarle.

Tutte le app

Vengono mostrate tutte le app installate. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona di un'app per aggiungerla al Quick Launcher. Dal menu contestuale del tasto destro del mouse, è anche possibile selezionare l'esecuzione, l'installazione o la disinstallazione dell'applicazione.

Ottenere i file dei risultati

Esportare i file dei risultati di scansione

Oltre a condividere i risultati con i collaboratori tramite gli ordini, Medit Link consente di archiviare i file dei risultati nel formato desiderato attraverso la funzione di esportazione.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Esporta i file in	Consente di specificare il percorso in cui si desidera archiviare i file dei risultati.
Nome della cartella	Il sistema crea una nuova cartella e vi archivia tutti i file dei risultati. Il nome predefinito della cartella è stabilito dalla regola di denominazione. Tuttavia, l'utente può modificare direttamente il nome della cartella. È possibile stabilire la regola di denominazione in Impostazioni > Opzioni di esportazione > Regole per il nome della cartella.
Nome del file	Consente di impostare il nome del file per il risultato. Il nome predefinito del file è stabilito dalla regola di denominazione. Tuttavia, è possibile modificare direttamente il nome del file. È possibile definire la regola di denominazione tramite Impostazioni > Opzioni di esportazione > Regole per il nome del file.
Tipo	Scegliere il programma di progettazione che si desidera utilizzare. Medit Link regolerà automaticamente i file in base alla selezione, consentendo di procedere con la progettazione senza la necessità di un ulteriore allineamento degli assi.
Formato Mesh	Consente di specificare il formato del file mesh.
Formato immagine	Consente di specificare il formato dei file di immagine esportati.
Comprimi i file	Consente di comprimere tutti i risultati in un singolo file.
Combina mesh individuale	Consente di combinare il risultato della mascella o della mandibola con il singolo dente. Utile quando non è possibile importare più file in un programma.
Esporta tutte le relazioni occlusali	Quando vengono generati più risultati occlusali dall'app di scansione, è possibile esportare tutti i risultati occlusali contemporaneamente.
Salva informazioni sul caso come PDF	Salva le informazioni sul caso come PDF con il risultato.

Esportare i file dei risultati dall'elenco dei casi

È possibile esportare i file dei risultati di un caso o più casi contemporaneamente tramite il comando "Esporta", situato sopra l'elenco dei casi in Case Box e Work Box.

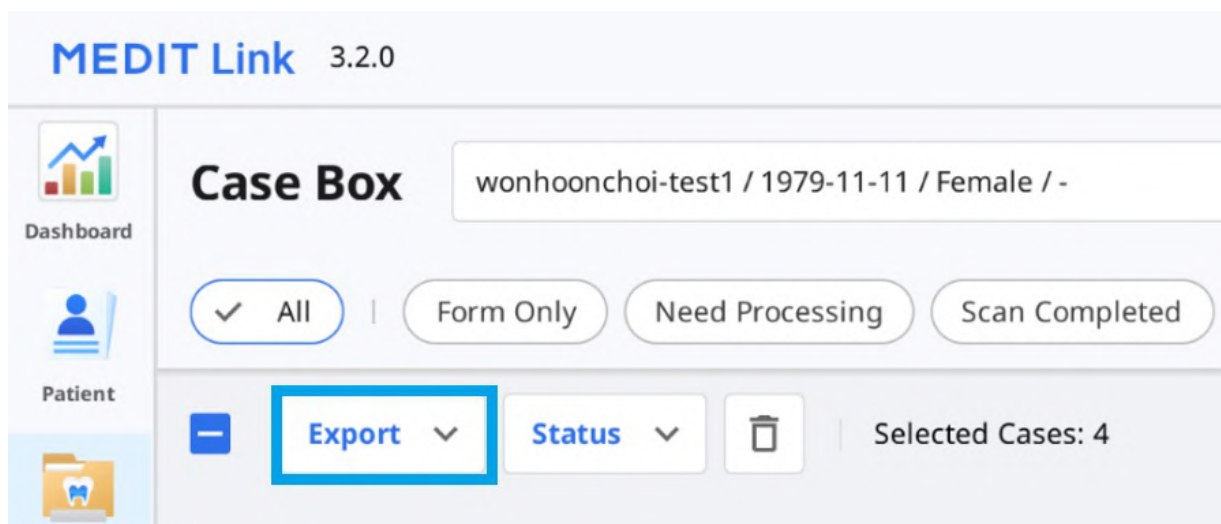

1. Aprire Case Box o Work Box.
2. Selezionare dall'elenco tutti i casi da cui si desidera esportare i file dei risultati.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Cliccare su "Esporta" e selezionare "File dei risultati".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Impostare la cartella di destinazione, il tipo di file, il formato della mesh e quello dell'immagine e selezionare le opzioni di esportazione nella scheda "Opzioni".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type ⓘ

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



I campi "Nome della cartella" e "Nome del file" non sono modificabili quando si esportano file per più casi.

Il nome della cartella e il nome del file vengono creati automaticamente in base alle regole impostate per le opzioni "Regola per il nome della cartella" e "Regola per il nome del file" in Impostazioni > Opzioni di esportazione.

5. Cliccare su "Esporta".
6. Cliccare su "Sì" per aprire la cartella in cui sono salvati i file.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Esportare i file dei risultati dal visualizzatore file

È possibile esportare i file dei risultati di scansione per un caso tramite l'icona "Esporta" situata nell'angolo superiore destro della scheda Visualizzatore file.

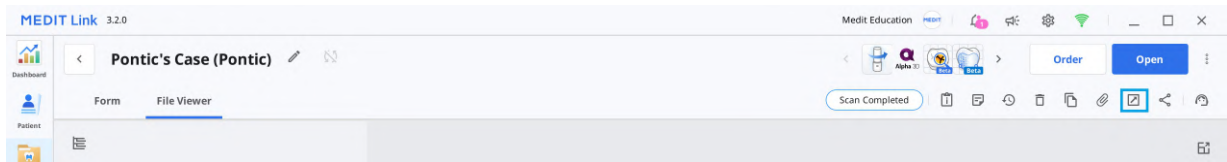

1. Aprire Case Box o Work Box.
2. Cliccare per aprire un caso dall'elenco.
3. Fare clic sull'icona "Esporta" nell'angolo superiore destro della scheda Visualizzatore file.

4. Impostare la cartella di destinazione, il nome della cartella, il nome del file, il tipo di file, il formato della mesh e quello dell'immagine e selezionare le opzioni di esportazione nella scheda "Opzioni".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. Nella scheda "Elenco dei file" è possibile selezionare i file necessari per il caso deselectando quelli superflui.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒

Base

☒

Mandible

☒

Base

☒

Occlusion

☒

First Occlusion

☒

Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒

Maxilla

☒

Mandible

☒

Face Scan Data

☒

Face Scan Data

Close

Export

6. Cliccare su "Esporta".
7. Cliccare su "Sì" per aprire la cartella in cui sono salvati i file.

Question

?

Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

Esportare i file dei risultati dall'albero dei dati

È possibile esportare uno o più file di uno specifico gruppo di dati dal menu esteso del visualizzatore file.


125

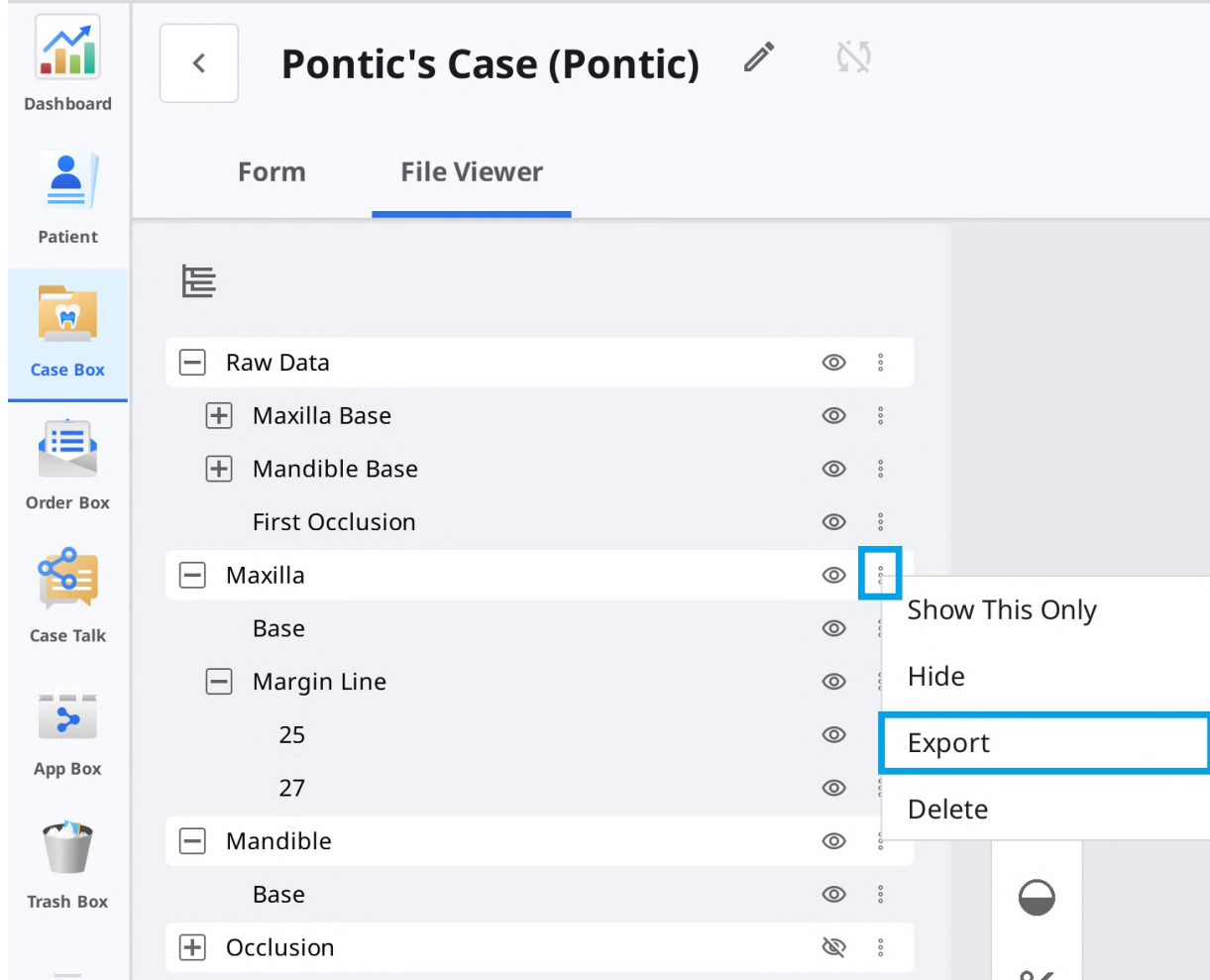

1. Aprire Case Box o Work Box.
2. Cliccare per aprire un caso dall'elenco.
3. Cliccare sull'icona dei tre puntini accanto al gruppo di dati o a un'entità nell'albero dei dati nella scheda Visualizzatore file.



4. Successivamente, cliccare su "Esporta".

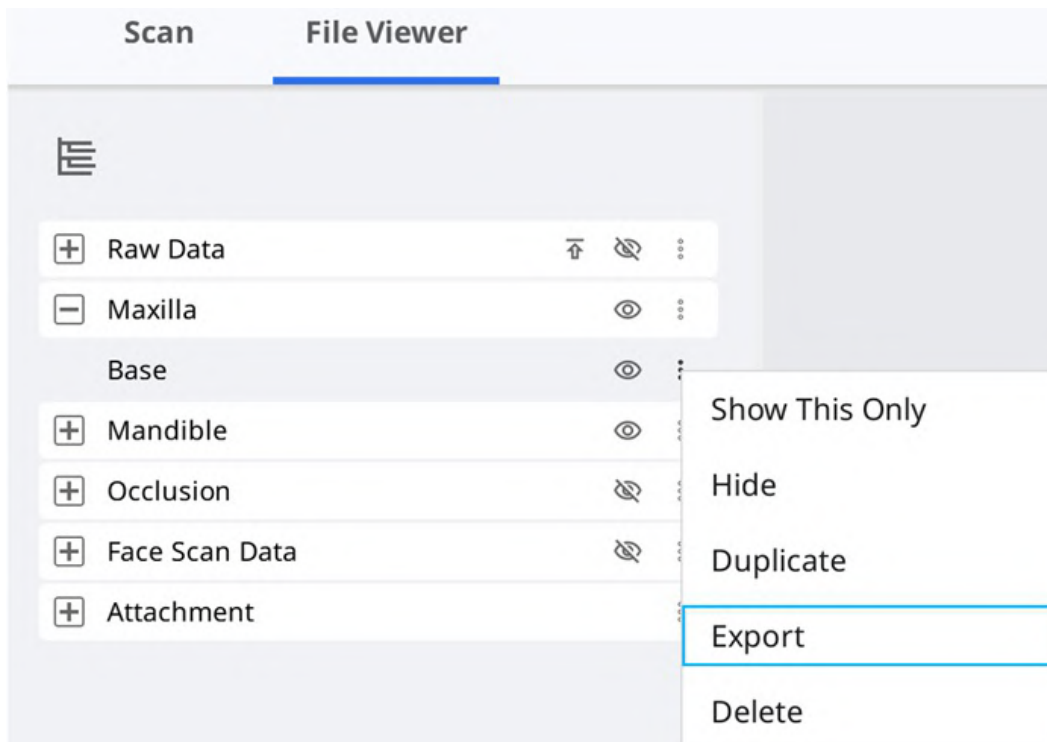

5. Impostare la cartella di destinazione, il nome della cartella, il nome del file, il tipo di file, il formato della mesh e quello dell'immagine e selezionare le opzioni di esportazione nella scheda "Opzioni".

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Nell'elenco dei file sono selezionati solo i file scelti nell'albero dei dati.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Cliccare su "Esporta".

8. Cliccare su "Sì" per aprire la cartella in cui sono salvati i file.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Esportare l'elenco dei casi come CSV

Medit Link fornisce la funzione per esportare l'elenco dei casi in formato CSV.

È possibile esportare l'elenco dei casi con le informazioni di base e gestire facilmente i casi.

1. Aprire Case Box, Order Box, In Box o Work Box.
2. Selezionare i casi che si desidera esportare.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Cliccare su "Esporta" e selezionare "Elenco dei casi (come mostrato)" o "Elenco dei casi (con tutti gli elementi)".

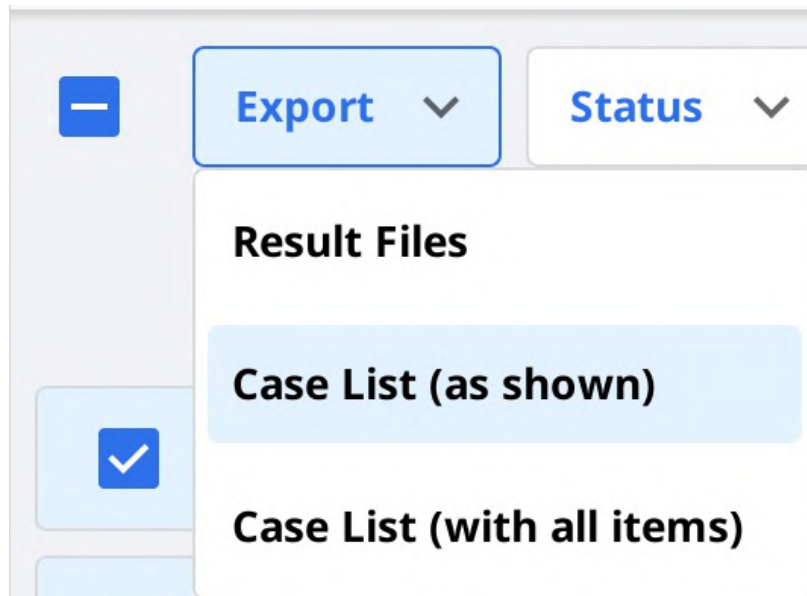

Nota

Elenco dei casi (come mostrato): consente di esportare l'elenco dei casi con gli elementi attualmente mostrati sulla schermata. Aprire Opzioni di visualizzazione > Elementi della tabella per mostrare o nascondere le voci come si desidera.

Elenco dei casi (con tutti gli elementi): consente di esportare l'elenco dei casi con tutti gli elementi, compresi Stato, Nome del caso, Data di nascita, Informazioni del modulo, Ultima modifica, Data di scansione, Data dell'ordine e Nome del laboratorio.

4. Definire il percorso e il nome del file, quindi salvare l'elenco.
5. L'elenco dei casi viene salvato come file CSV.

Esportare la linea di margine


Medit Scan for Clinics fornisce una funzione per creare la linea di margine e Medit Link può trasferirla al programma CAD.

Esportare la linea di margine come colore

In generale, Medit Link converte la linea di margine come colore ed esporta il risultato insieme alla mascella o alla mandibola. È possibile creare la linea di margine nel loro cad facendo riferimento alle informazioni sul colore.

Esempio:

Mascella

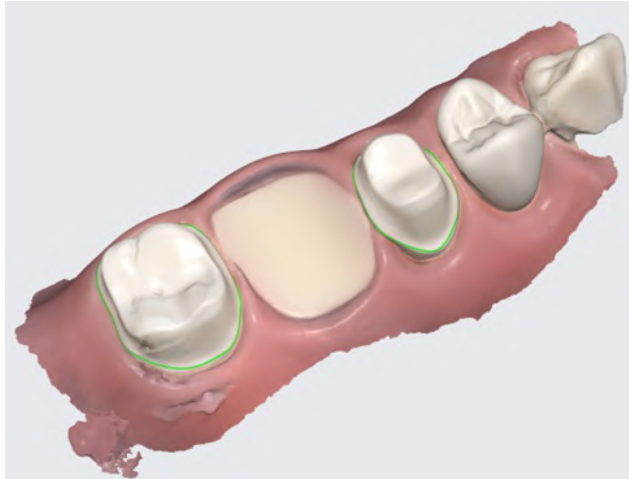

Risultato con le linee di margine come informazioni colore

Nota

Questa funzione è disponibile per i formati che includono informazioni sui colori, come meditMesh, OBJ e PLY. La linea di margine non viene convertita in STL.

Nota

Tipo > 3Shape non supporta questa funzione.


Esportare la linea di margine come file

Nel caso di Exocad, Medit Link esporta la linea di margine come "~margin.xyz", che può essere importata direttamente in exocad.

È possibile utilizzare questo file in exocad senza lavorazioni aggiuntive.


Esempio:

Mascella

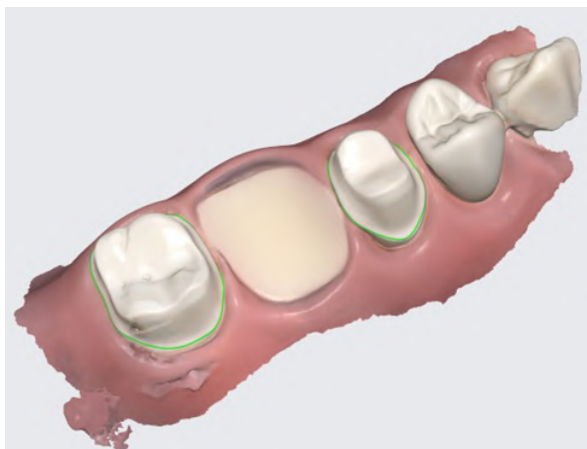

Risultato con le linee di margine come informazioni colore

Linea di margine

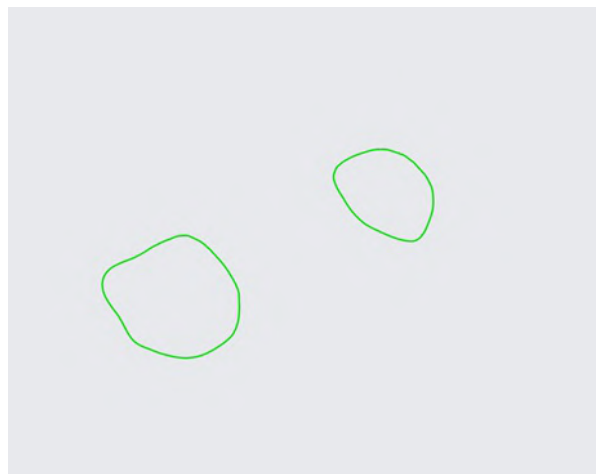

Linea di margine esportata come singoli file

Scaricare i file da Medit Link Web

Medit Link offre una funzione di download.

Se si desidera scaricare i file dei risultati senza installare l'applicazione Medit Link, è possibile farlo dal servizio web di Medit Link.

Nota


È necessario caricare i dati sul cloud Medit per scaricare i file dal web.

La funzione di download è disponibile nei seguenti menu del servizio web di Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

È possibile trovare il pulsante "Download" in alto a destra.

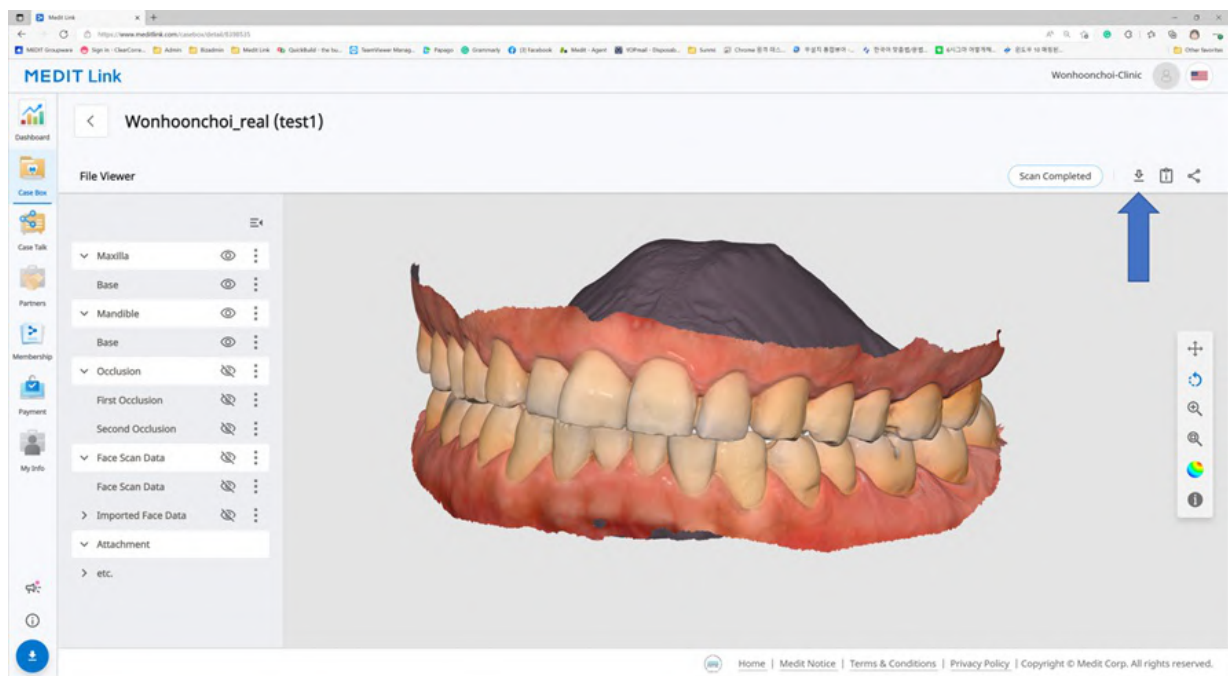

Web Viewer

Quando si condivide il caso utilizzando Case Talk, è possibile scegliere se consentire o meno il download.

Selezionando "Autorizza il download" e condividendo il caso, tutti gli utenti che si collegano al link condiviso potranno scaricare i file.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

Nel Web Viewer, è possibile trovare l'icona "Download" in alto a destra.

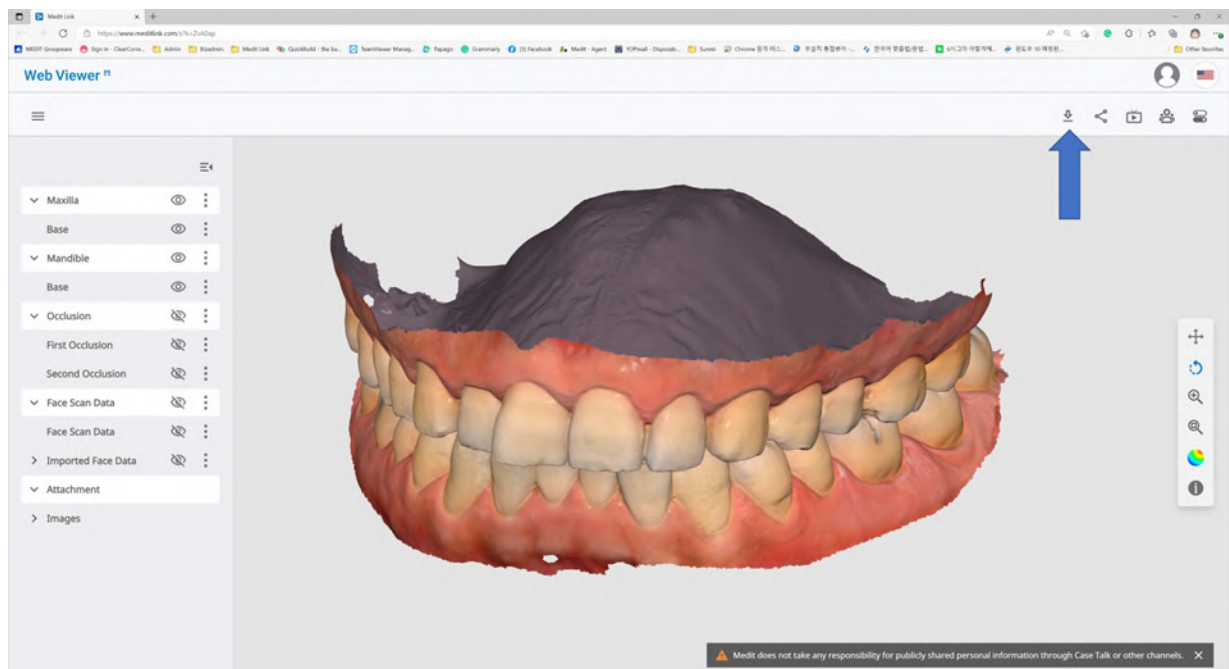

1. Cliccare su "Download".



2. Selezionare il formato mesh dalla finestra di dialogo di download.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

- Successivamente, cliccare su "OK".

Ordinare/gestire gli ordini

È possibile ordinare facilmente un caso con i dati acquisiti dai programmi collegati e allegati dall'utente.

Ordinare i casi

È possibile effettuare un ordine per i propri collaboratori in Case Box.

1. Cliccare sul pulsante "Ordina".
2. Controllare le informazioni necessarie per l'ordine.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. Selezionare un collaboratore.
4. Consultare le informazioni sul prodotto dalla scheda Elenco degli ordini.
 - È possibile scegliere se condividere il nome del paziente.
5. Controllare i file da ordinare dalla scheda Elenco dei file.
6. Inserire la data di consegna desiderata.
 - Il valore predefinito è impostato su 7 giorni dopo la data dell'ordine.
7. È possibile aggiungere promemoria e tag al collaboratore per delineare dettagli specifici.
8. Quando vengono generati più risultati occlusali dall'app di scansione, è possibile inviarli tutti contemporaneamente selezionando "Ordina tutte le relazioni occlusali".

9. Procedere con l'ordine.

Confermare l'ordine (In Box)

- Accettare l'ordine dopo averlo ricevuto.
- Gli ordini accettati verranno inoltrati a Work Box.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Annullare l'ordine (Order Box)

- È possibile annullare un ordine prima che il collaboratore lo accetti.
- I casi annullati possono essere nuovamente ordinati.

test's Case (test)

Order File Viewer

Cancel

Pending

Rifiutare l'ordine (In Box)

- È possibile rifiutare un ordine ricevuto.
- I casi rifiutati possono essere nuovamente ordinati.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Controllare i casi ordinati

È possibile controllare i dettagli del caso ordinato da Order Box nell'account clinica. È inoltre possibile controllare il caso ricevuto da In Box nell'account laboratorio.

MEDIT Link 3.2.0

test's Case - Clone / wh-clinic-ds...

Order File Viewer

Accepted

Order ID: 13455074

Patient Name: *** Partner Name: wh-clinic-dso-3

Scanned Date: 2023-08-04 오후 1:58 Order Date: 2023-10-26 오후 4:38

Requested Delivery Date: 2023-11-02 Expected Delivery Date: 2023-11-02

오전 08:00 오전 08:00

Memo

Tags

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informazioni sull'ordine	Le informazioni che possono essere incluse nell'ordine sono le seguenti: ID dell'ordine/nome del paziente/nome dell'account/data di scansione/data dell'ordine/data di consegna/termine di consegna/promemoria. È possibile consultare i dettagli del prodotto ordinato e le informazioni sulla consegna.
Elenco degli ordini	L'elenco degli ordini mostra i dettagli del prodotto ordinato.
Spedizione	Consente di inserire/controllare le informazioni di spedizione.

Inserire le informazioni di spedizione (In Box)

Consente di inserire le informazioni di spedizione per il caso completato e avviare la spedizione.

1. Cliccare sulla scheda "Spedizione".
2. Inserire le informazioni di spedizione e cliccare su "Registra".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Le informazioni inserite vengono inviate al collaboratore.

Gestire la data di consegna

È possibile impostare la data di consegna prevista quando si effettua un ordine. Questa informazione verrà inoltrata al collaboratore.

Impostare la data di consegna richiesta (account Clinica)

- Quando si ordina da Case Box, è possibile inserire la data di consegna richiesta.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Il valore predefinito è 7 giorni dopo la data dell'ordine.
- Inserire la data e l'ora in cui si desidera ricevere i prodotti e procedere con l'ordine.
- È possibile impostare facilmente l'ora utilizzando il cursore.

Impostare la data di consegna prevista (account Laboratorio)

- È possibile inserire la data di consegna prevista per il caso ordinato da In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10


No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Controllare la data di consegna richiesta con il collaboratore e riprogrammare utilizzando il pulsante "Modifica".



2. Inserire la data di consegna prevista considerando il giorno lavorativo effettivo. Se necessario, è anche possibile lasciare un commento.
3. Cliccare su "Applica".

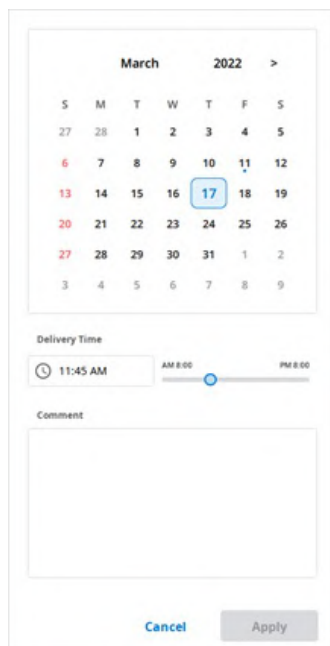

4. La data di consegna prevista e il promemoria verranno inoltrati insieme all'ordine.
 - È possibile visualizzare la data e i promemoria in Order Box.
 - È inoltre possibile modificare la data di consegna prevista. Le modifiche verranno inoltrate al collaboratore.
5. L'utente può controllare la cronologia del caso utilizzando il pulsante "Cronologia".



Completare il caso

Completare (Work Box/In Box)


Una volta portate a termine tutte le attività, cliccare su "Finito" per completare il caso.

Completare un caso dai dettagli del caso

L'icona con i tre puntini si trova a destra del pulsante "Apri" o "Scansiona nuovamente".




Completare il lavoro cliccando sull'icona e selezionando "Done".

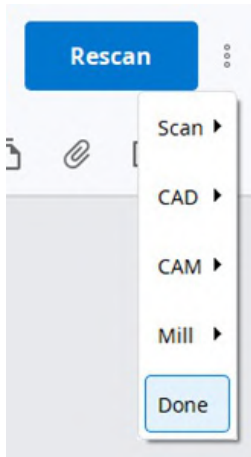

Completare i casi multipli dall'elenco dei casi

1. Andare su Work Box.
2. Selezionare tutti i casi da completare.

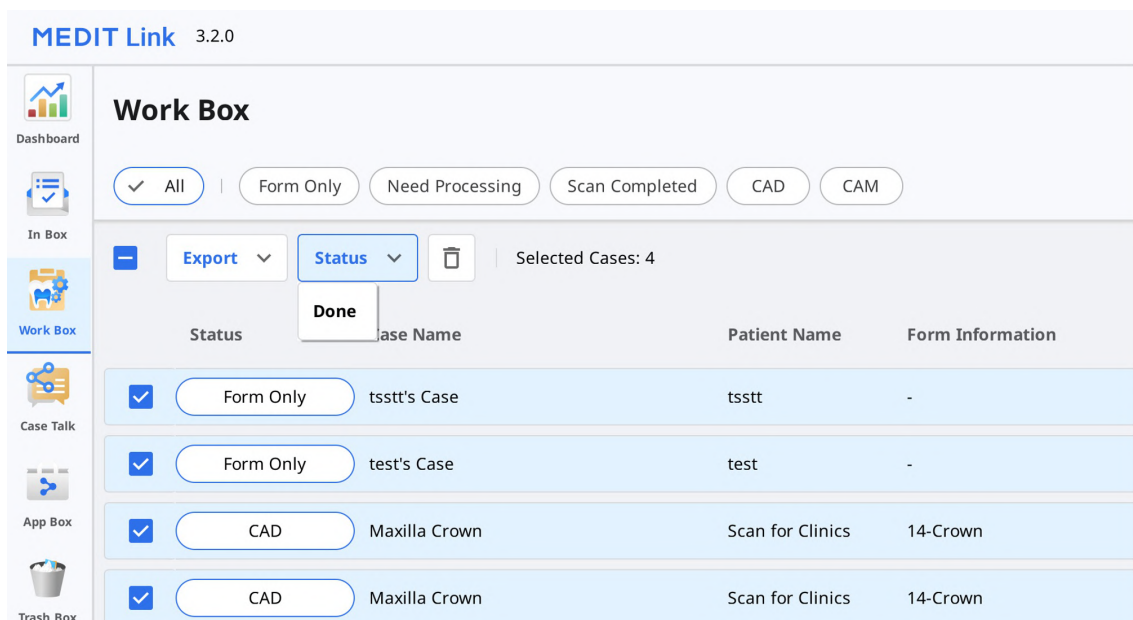


3. Cliccare su "Stato" e selezionare "Done".

Completare (Case Box/Order Box)

Una volta che il laboratorio ha completato il caso, la clinica deve confermarlo per completare l'intera procedura di ordinazione.

La clinica può trovare il pulsante "Conferma la consegna" in Order Box se il laboratorio ha completato il suo lavoro.

Cliccandoci sopra, l'intera procedura di ordinazione viene completata e lo stato del caso passa a "Case Completed".

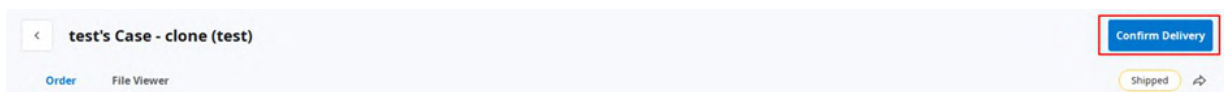

Completare un caso non ordinato in Case Box

È possibile completare i casi che non sono stati ordinati al laboratorio da Case Box.

1. Andare su Case Box.
2. Selezionare il caso che si desidera completare.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. Cliccare su "Stato" e selezionare "Case Completed".

Comunicare utilizzando i tag

È possibile aggiungere ulteriori informazioni relative al caso utilizzando i tag e inviarle ai collaboratori.

Aggiungere tag quando si crea un nuovo caso

È possibile inserire tag quando si crea un nuovo caso o si modifica le informazioni del caso.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

È inoltre possibile cercare e selezionare facilmente i tag utilizzati in precedenza.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Aggiungere tag quando si ordina

È possibile visualizzare e modificare i tag nella finestra di dialogo Ordine durante il processo di ordinazione.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Controllare i tag in Dettagli del caso

