

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

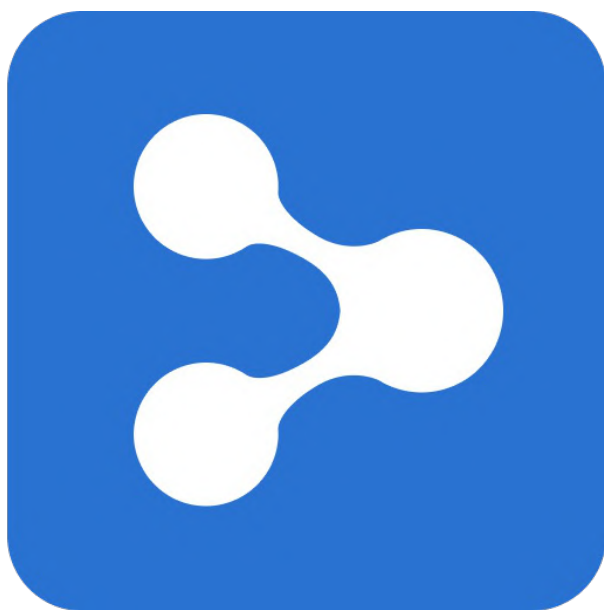


Table of Contents

Medit Link

Introductie	7
Medit Link	7
Overzicht van de dienst	7
Clouddienst	8
Workflowbeheer platform met ordersysteem	9

Medit Link > Installatie

Systeemvereisten	10
Systeemvereisten voor Windows	10
Systeemvereisten voor macOS	10
Systeemvereisten voor Web Service	10
Aanbevolen voor browsers	10
Minimum voor mobiele apparaten	10
Installatie op Windows	11
Installatie op macOS	14

Medit Link > Aan de slag

Aanmelden en inloggen	18
Medit Link Website	18
Aanmelden	18
Login en welkomspagina	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Dashboard overzicht	24
Medit Insights	24
Abonneer op Medit Insights	25
Uitschrijven voor Medit Insights	26
Patient	27
Patiënt zoeken	27
Case Box/Work Box	28
Dossiers filteren	28
Op patiënt filteren	28
Filter op status	31
Filter op duur	31
Filter op zoekopdracht	32
Dossierdetails	32
Order Box/In Box	34
Orderdetails	34
Tabbladen in Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Een Case Talk aanmaken	35
Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen	36
Case Talk details	38
Web Viewer	39
Annotatie	40
Opmerkingen	42

Realtime scherm delen	42
Gegevensboom	42
Gegevensboom beheren	42
3D-model beheren	43
Partners	45
Zoek naar partners	45
Mijn partnerlijst	45
Partner uitnodigen	46
Membership	47
Lidmaatschap	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Cloudopslag	49
Abonneren	49
Abonnement annuleren	51
Mijn abonnement	52
Details	53
Opnieuw abonneren	53
Een betaalmethode toevoegen	54
Een betaalmethode wijzigen	55
Inwisselen	55
Details	56
Registreer actiecode	56
Activeer actiecode	57
Betalingsdetails	57
Factuurdetails bekijken	58
My Info	60
Mijn account	60
Mijn praktijk/Mijn lab (Alleen beheerdersaccount)	60
Mijn scanner	61
Ander menu	63
Mededeling en update	63
Gerelateerde websites	63
Download Medit Link App	64
 Medit Link > Medit Link App	
Overzicht	65
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare menu's in elk type praktijk en laboratorium account	65
Titelbalk	66
Mijn informatie	66
Meldingen	66
Mededeling & update	67
Instellingen	67
Netwerkstatus	68
Instellingen	70
Algemeen	70
Opslagbeheer	71
Periode instellen	72
Lokale opslag	72
Cloudopslag	72
Stel verbonden programma in	73
Export opties	73
Omzetinstrument voor dossiers	75

Dossier exporteren	76
Dossier importeren	77
Proxy-opties	79
Over	79
Gebruikershandleiding	80
Menu	81
Dashboard	81
Patient	81
Nieuwe patiënt toevoegen	82
Patiënt wissen	82
Patiënten samenvoegen	83
Case Box/Work Box	83
Tabbladen in Case Box/Work Box	84
Functies in Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Tabbladen in Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Alle	87
Medit Apps	87
Gedownload	88
Trash Box	88
Dossier synchronisatiebeheerder	89
Uploaden	89
Downloaden	90
Gerelateerde websites	90
Bestandenbekijker	92
Gegevensboom	92
Instrumenten voor modelcontrole	92
3D-model beheren	93
2D-afbeeldingen beheren	94
Functie-instrumenten	94
Beeldopname en notitie	94
Ortho-opname	95
Gaten vullen	96
Bijknippen	97
Optimaliseer occlusie-uitlijning	100
Onderkaakbeweging	102
Beheer Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker	102
Meerdere resultaten beheren	102
Weergaveopties	104
Statusfilters	104
Weergavetype	105
Groeperen	105
Sorteren	105
Filteren en zoeken	107
Op patiënt filteren	107
Op datum filteren	108
Geavanceerde zoekmogelijkheden	109
 Medit Link > Workflow	
Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen	110

Dossiers aanmaken	110
Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)	110
Dossier aanmaken in Work Box (Lab)	111
Dossiers bewerken	111
Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)	111
Dossier bewerken in Work Box (Lab)	112
Dossiers kopiëren	113
Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)	113
Dossier kopiëren in Work Box (Lab)	113
Dossier wissen	114
Dossier wissen (Clinic en Lab)	114
Formulierinformatie	115
Formulierinformatie registreren in Case Box	115
Voer in op het tabblad Formulier	115
Formulierinformatie registreren in Work Box	115
Voer in op het tabblad Formulier	115
Tanden verbinden tot brug	115
Scanopties instellen	116
Medit Scan for Labs	116
Algemene opties	116
Opties per tand	116
Aan favorieten toevoegen	116
Aan favorieten toevoegen	117
Favoriete sjablonen beheren	117
Werken aan scannen/CAD	118
Scanproces	118
CAD-proces	118
Add-in apps gebruiken	118
Invoegtoepassing Quick Launcher	118
App launcher beheer	118
Quick Launcher	119
Alle apps	119
Resultaatbestanden krijgen	120
Bestanden met scanresultaten exporteren	120
Resultaatbestanden exporteren vanuit de dossierlijst	121
Resultaatbestanden exporteren vanuit Bestandenbekijker	124
Resultaatbestanden exporteren vanuit de Gegevensboom	125
Dossierlijst exporteren als CSV	128
Margelijn exporteren	129
Exporteer margelijn als kleur	129
Exporteer margelijn als bestand	130
Bestanden van Medit Link Web downloaden	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Dossiers bestellen/beheren	134
Dossiers bestellen	134
Order bevestigen (In Box)	135
Order annuleren (Order Box)	135
Order afwijzen (In Box)	135
Bestelde dossiers controleren	135
Verzendinformatie invoeren (In Box)	136
Bezorgdatum beheren	136

De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)	136
De verwachte bezorgdatum instellen (Laboratorium-account)	137
Dossier voltooien	138
Voltooien (Work Box/In Box)	138
Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails	138
Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst	139
Voltooien (Case Box/Order Box)	139
Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box	139
Communiceren met behulp van tags	141
Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier	141
Voeg tags toe bij het bestellen	142
Controleer tags voor dossierdetails	142

Introductie

Medit Link

Medit Link is een hulpmiddel voor samenwerking dat is ontworpen om de communicatie tussen praktijken en laboratoria te vergemakkelijken, zodat voor elke partij een optimale workflow ontstaat.

Het biedt verschillende functies op basis van het type account en de bijbehorende machtigingen. Het programma biedt een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor het beheer van de workflow, van het scannen met mond- en modelscanners tot het bestellen van dossiers, en van het ontwerpen tot het produceren van prothesen.

Medit Link bestaat uit een webdienst en een computerapplicatie.

Overzicht van de dienst

		Web	App
		• Het account registreren en beheren • Partners zoeken en beheren • Deel dossiers via Web Viewer met een deelbare link • Krijg toegang tot dossiers die in de app zijn gemaakt • Bestellingen beheren	• Voer formulierinformatie in • Scannen • Bestellingen beheren • Verbind met CAD • Patiënten beheren
Praktijk	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw praktijken, en deel dossiers. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Voer formuliergegevens in, scan, plaats bestellingen en beheer patiënten. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Lid	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorium	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw laboratorium, en deel dossiers. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Voer formulierinformatie in, scan en beheer bestellingen. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Lid	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Clouddienst

Medit Link ondersteunt het automatisch uploaden/downloaden van databases en bestanden via AWS (Amazon Web Services).

De in de cloud opgeslagen gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de computers van meerdere gebruikers binnen de organisatie, zodat ze vanaf elke computer op elk moment toegang hebben tot dezelfde gegevens. Dankzij back-up en herstel in de cloud zijn al uw gegevens veilig. Het houdt uw gegevens veilig, zelfs in het geval van gegevensverlies als gevolg van een plotselinge computerstoring.

Met de cloudfservice kunnen tandartsen en laboratoria die samenwerken snel gegevens delen zonder dat ze de scans per e-mail hoeven te verzenden of handmatig moeten overbrengen. Alle gegevens, inclusief patiëntinformatie, worden veilig gecodeerd, opgeslagen en verzonden. Medit voldoet aan medische wet- en regelgeving zoals HIPAA en AVG.

Workflowbeheer platform met ordersysteem

Medit Link biedt een bestelsysteem.

- Met Medit Link kunnen gebruikers samenwerkingsverbanden opzetten tussen tandartsen en tandtechnische laboratoria, waarbij gegevens snel en eenvoudig gedeeld kunnen worden.
- Controleer en beheer de orderstatus.

Systeemvereisten

Opmerking

Raadpleeg de systeemvereisten voor Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs als u de scansoftware met uw scanner wilt gebruiken.

Systeemvereisten voor Windows

	Laptop en Desktop
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz of hoger
RAM	16 GB of hoger
Grafische kaart	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) of hoger / of gelijkwaardige AMD-videokaart
Besturingssysteem	Windows 10 64 Bit (niet beschikbaar in 32 Bit) of hoger

Systeemvereisten voor macOS

	Mac
Processor	M1 met 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB of hoger
Besturingssysteem	Monterey 12 of later

Systeemvereisten voor Web Service

Aanbevolen voor browsers

	Browsers
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum voor mobiele apparaten

	Android	iOS
Apparaat	Gelijkwaardige aan Galaxy S7 of hoger	Gelijkwaardige aan iPhone 7 of hoger
Besturingssysteem	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB of hoger	2 GB of hoger
AP	Boven Snapdragon 710	A10 Fusion

Installatie op Windows

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met scanverwervingsprogramma's - Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs.


1. Voer Medit_LinkSetup.exe uit.
2. Selecteer een taal voor de installatie.
3. Selecteer de map voor de installatie van Medit Link. Lees en ga akkoord met de licentievoorwaarden en klik op "INSTALLEREN".

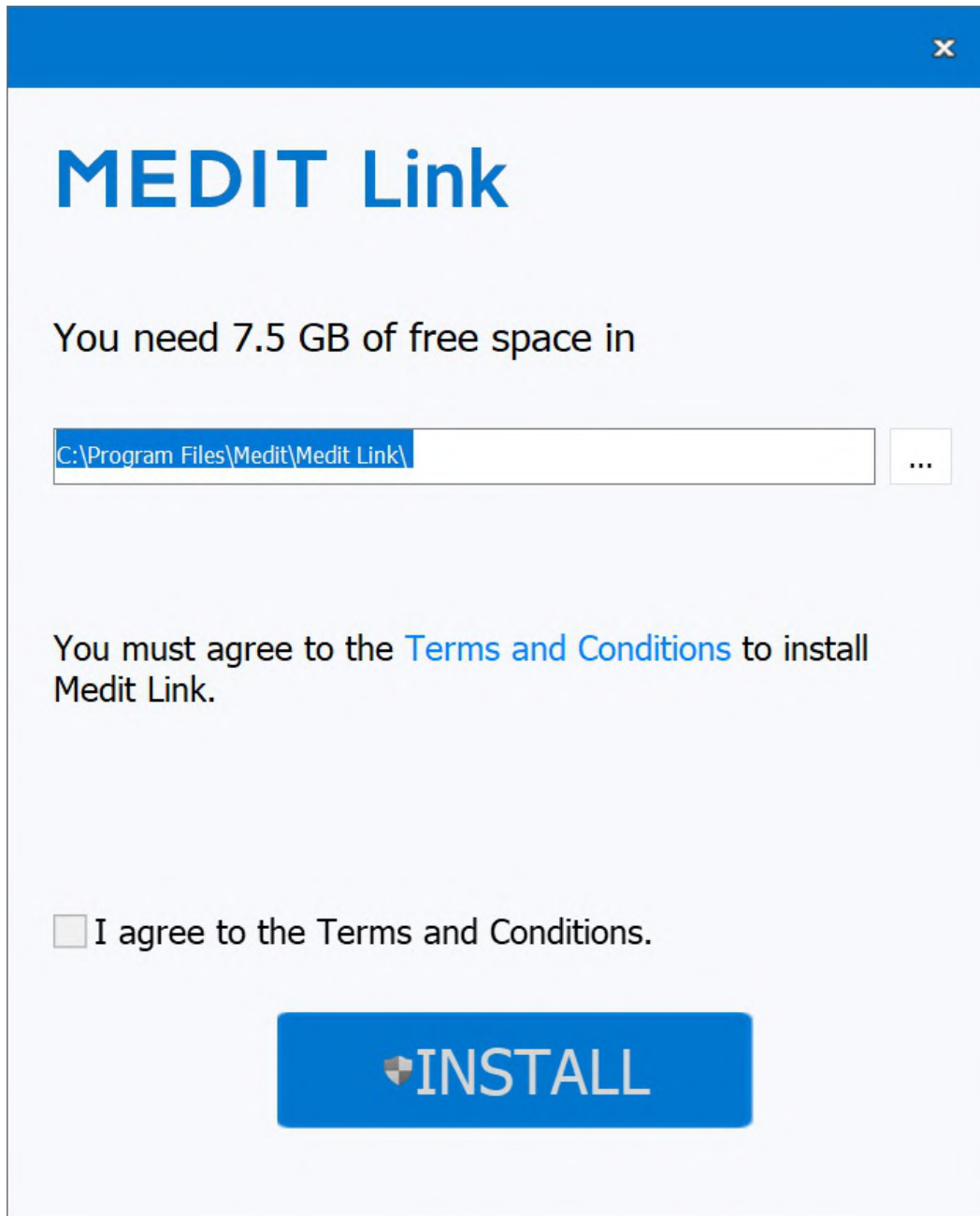

4. Zorg ervoor dat de scannerkabel is losgekoppeld van de computer voordat u doorgaat naar de volgende stap. De installatie kan niet worden uitgevoerd als de scanner op uw pc is aangesloten.
5. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. Schakel uw pc niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact voordat de installatie is voltooid.



6. Start uw pc opnieuw op nadat de installatie is voltooid. U kunt doorgaan zonder de pc opnieuw op te starten als u niet over de scanner beschikt.

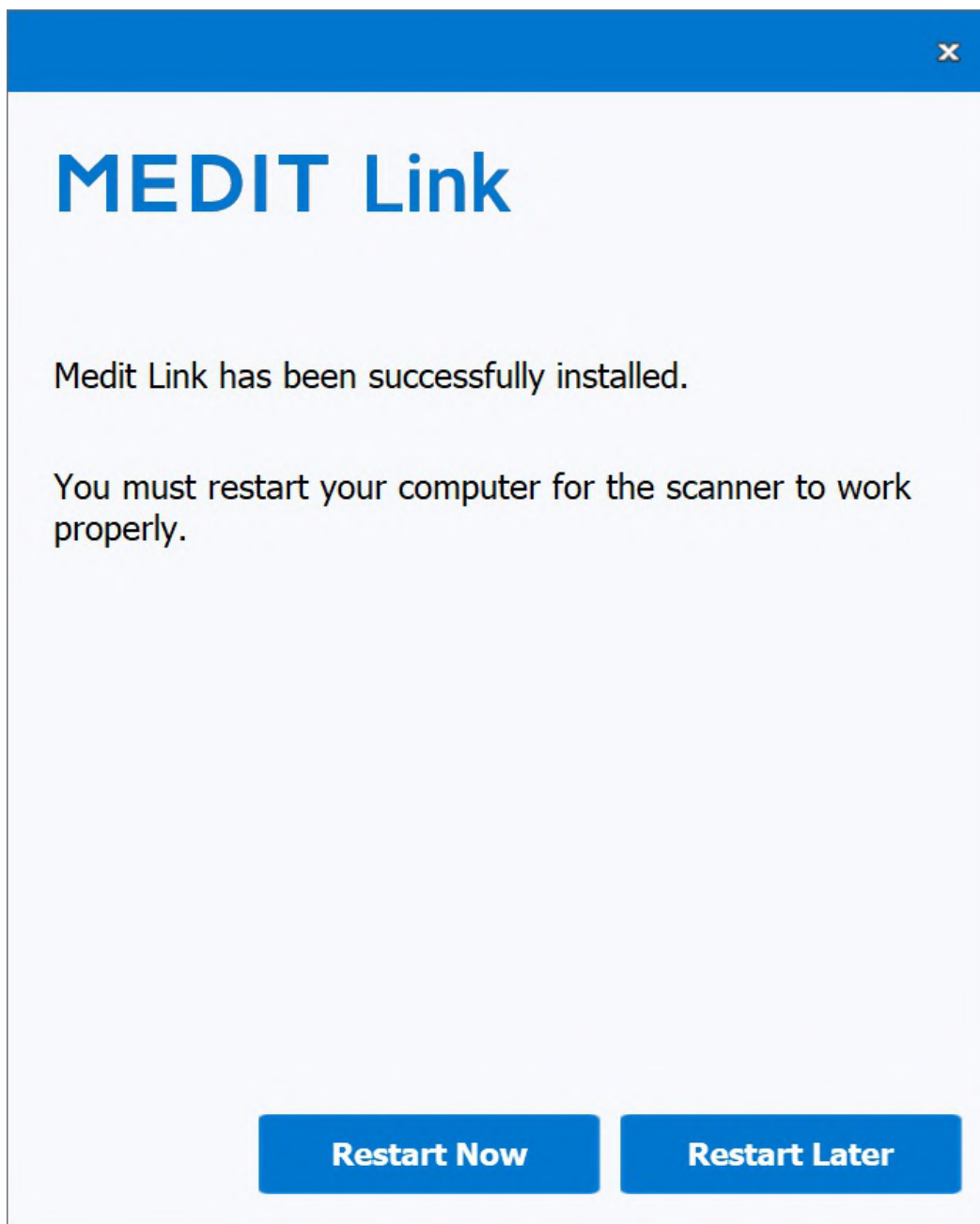


 Opmerking

Als u uw pc niet opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid, werkt de scanner mogelijk niet goed.


Installatie op macOS

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met Medit Scan for Clinics.


1. Voer Medit_Link_x.x.x.pkg uit en klik op "Doorgaan".

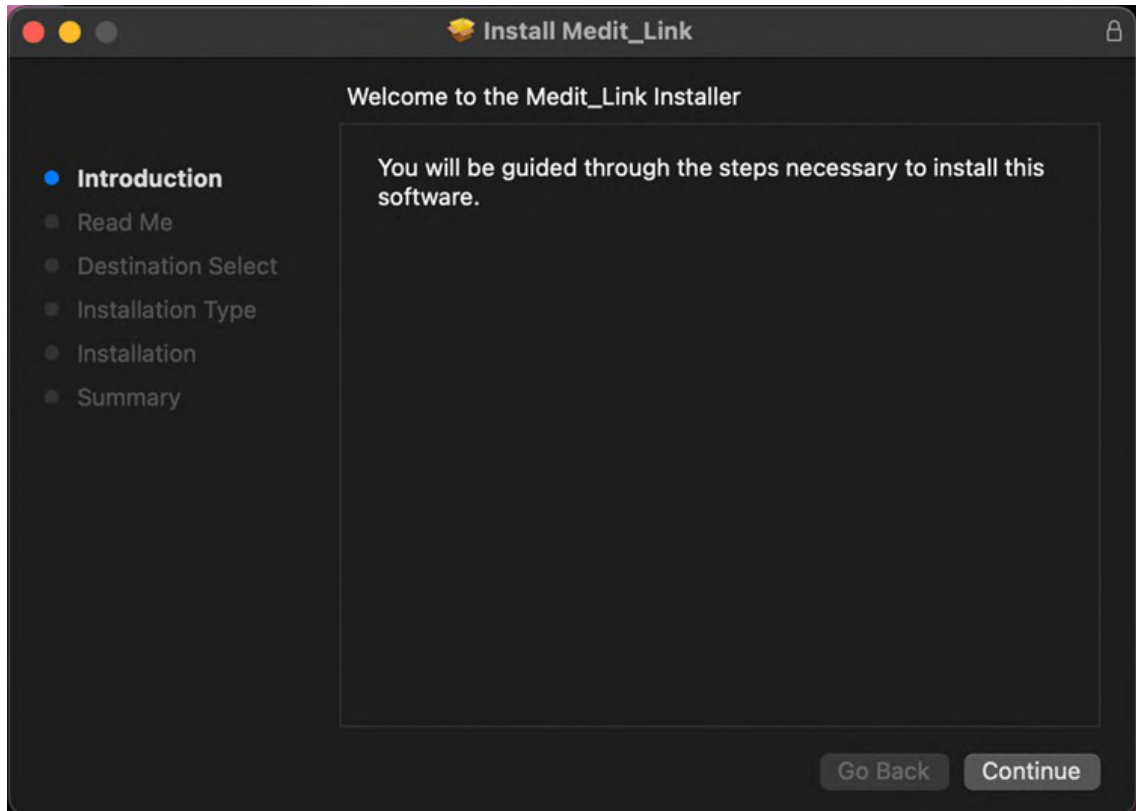


2. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op "Doorgaan".

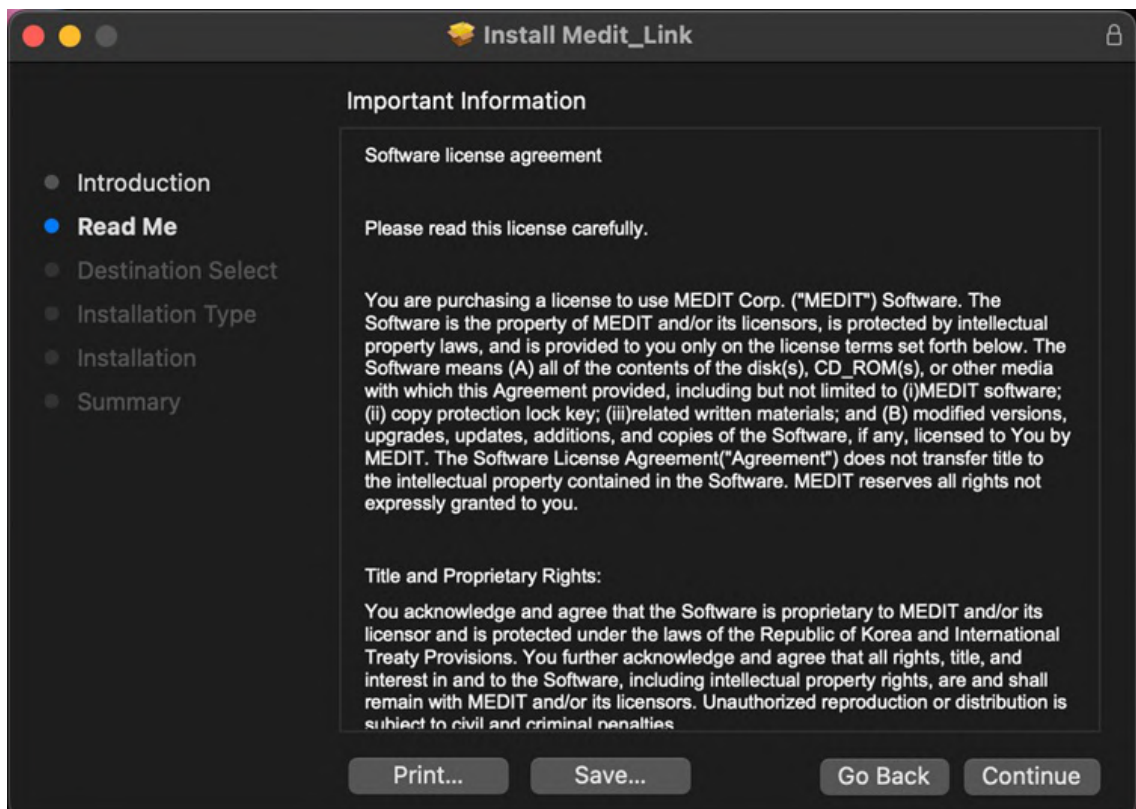


3. Selecteer de schijf voor installatie en klik op "Doorgaan".

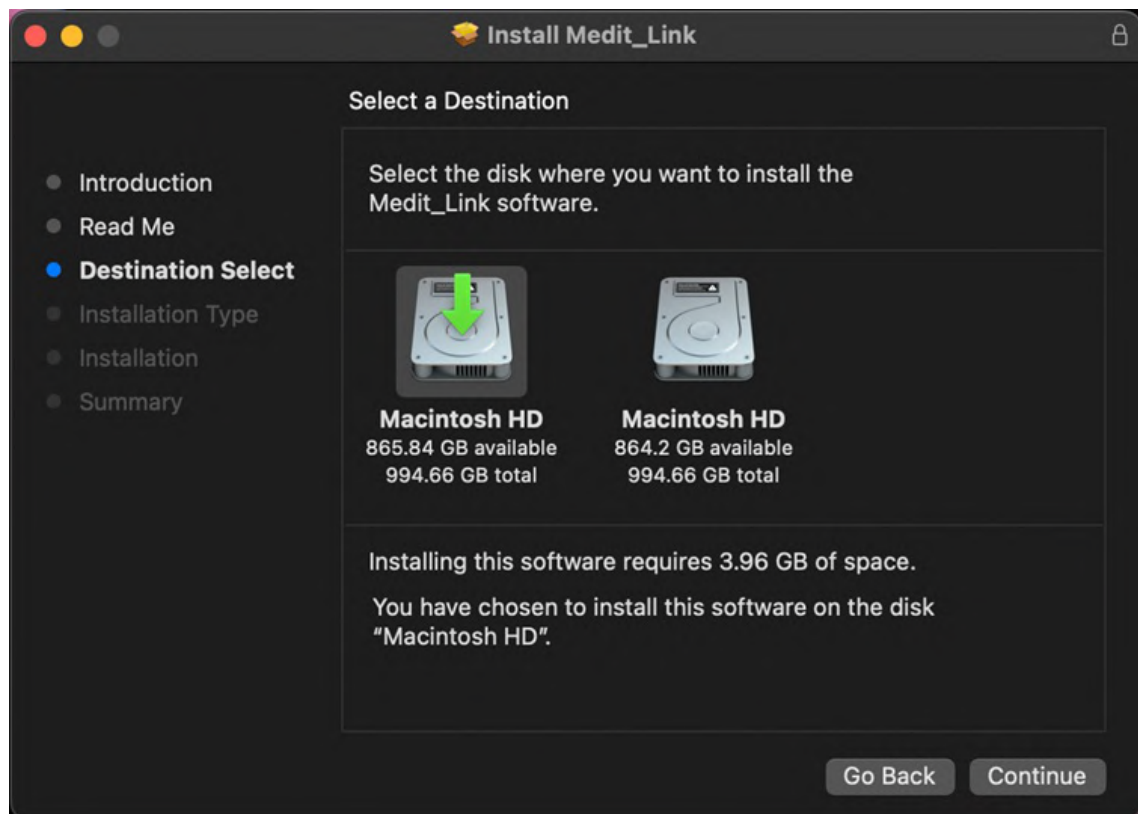


4. Klik op "Installatielocatie wijzigen..." om de installatiebestemming te wijzigen.

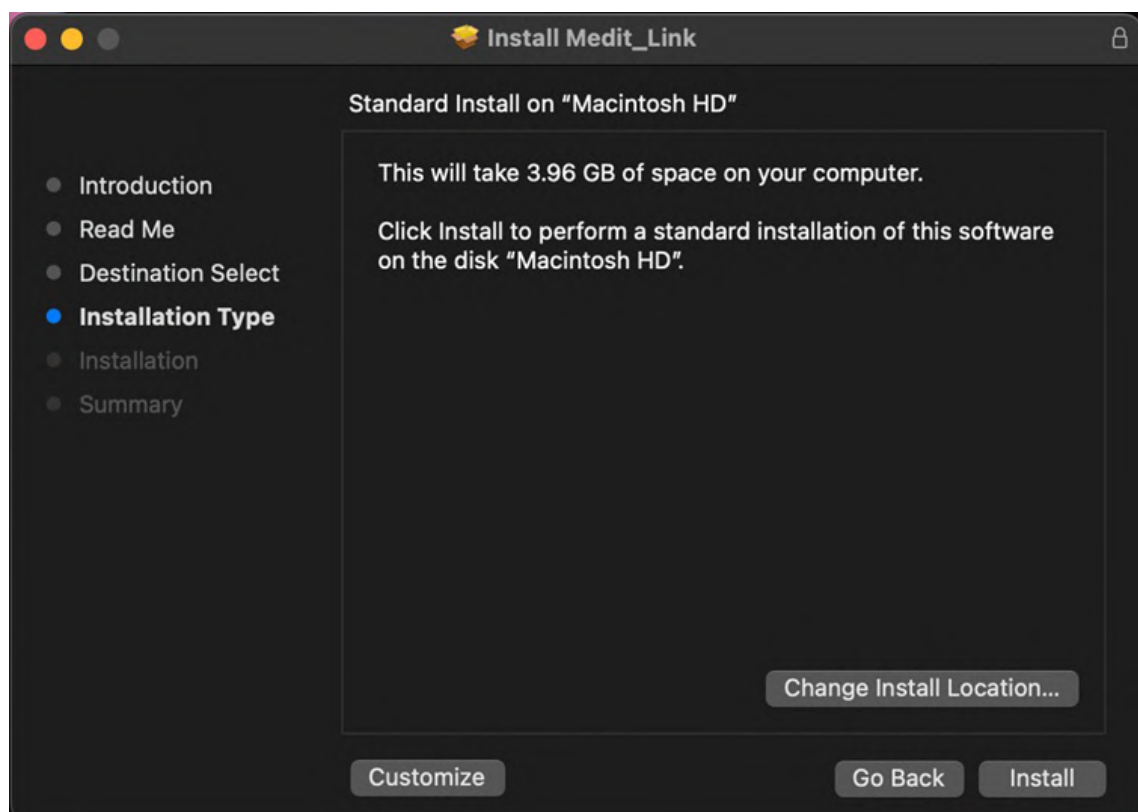


5. Klik op "Installeren" en typ uw Mac-wachtwoord om de installatie toe te staan indien daarom wordt gevraagd.

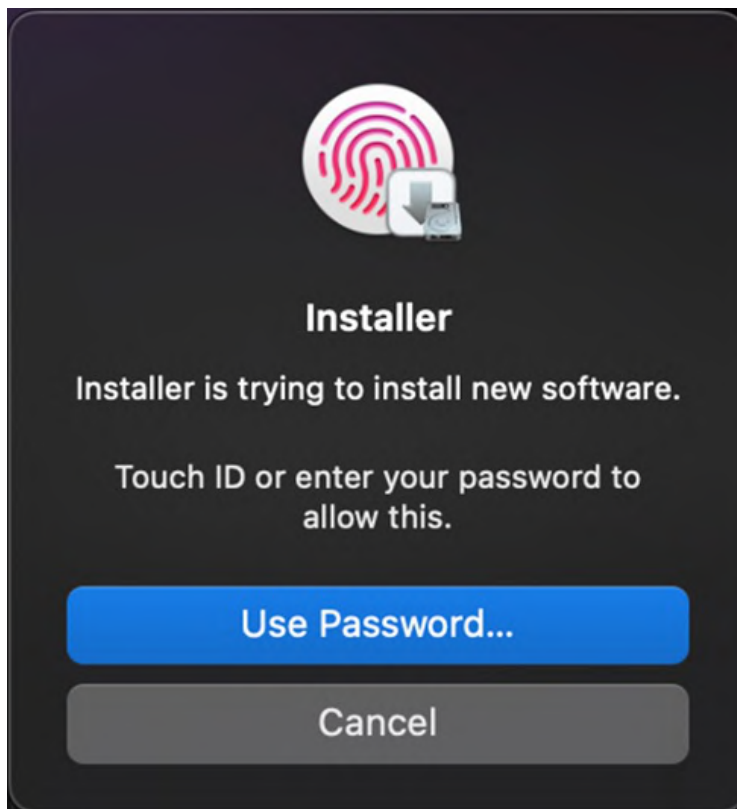

6. Wacht tot de installatie is voltooid.

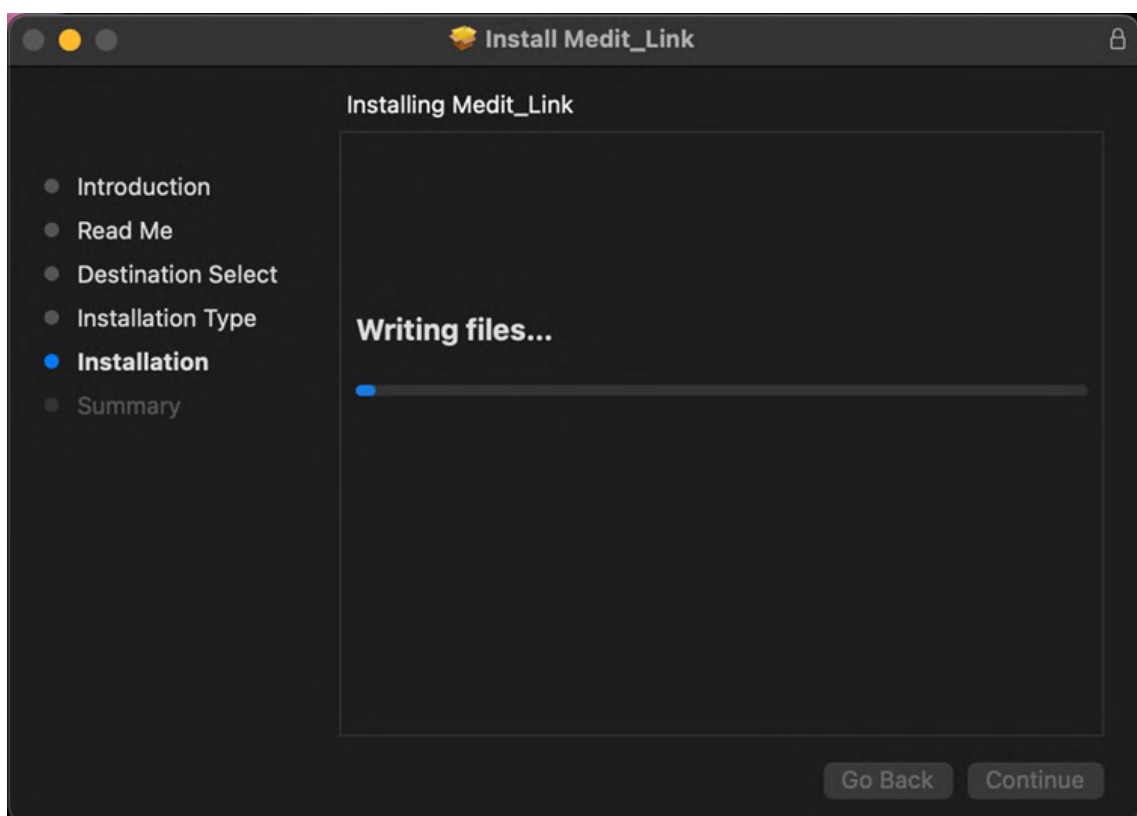


7. Klik op "Sluiten" om het installatievenster af te sluiten.

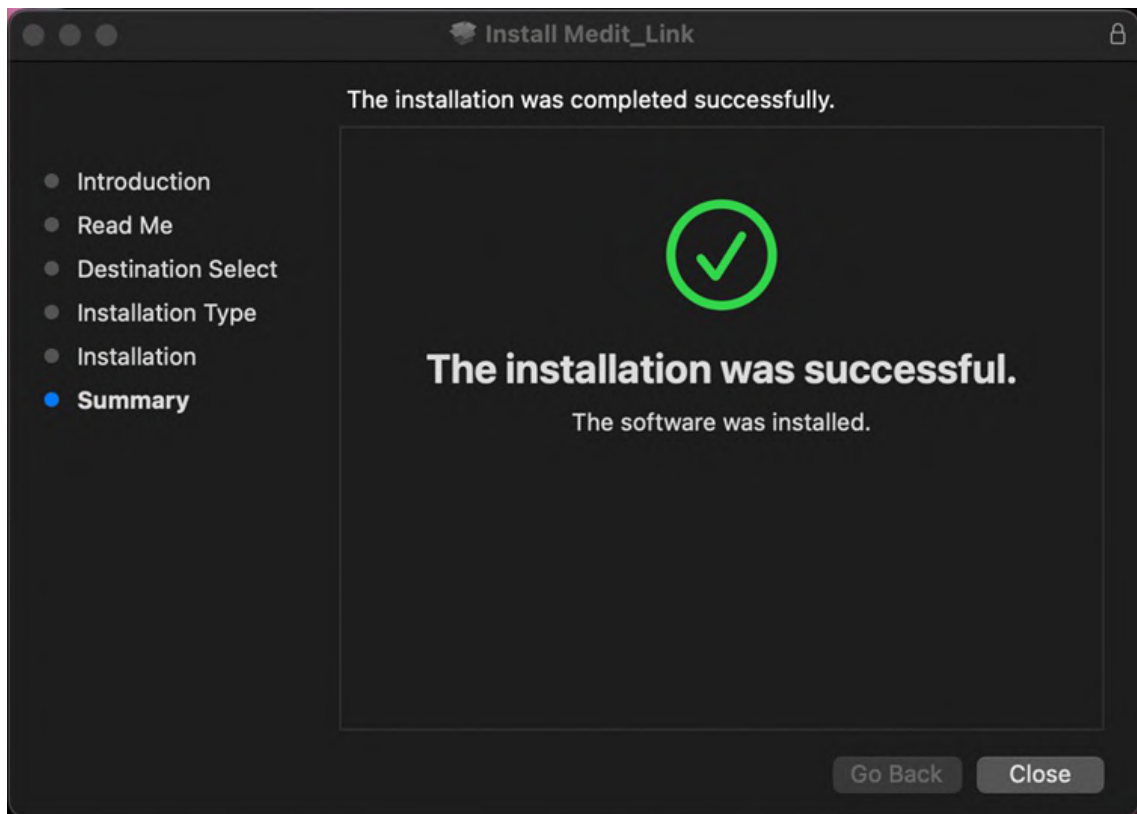

Aanmelden en inloggen

Medit Link Website

Meld u aan voor de Medit Link service op www.meditlink.com.

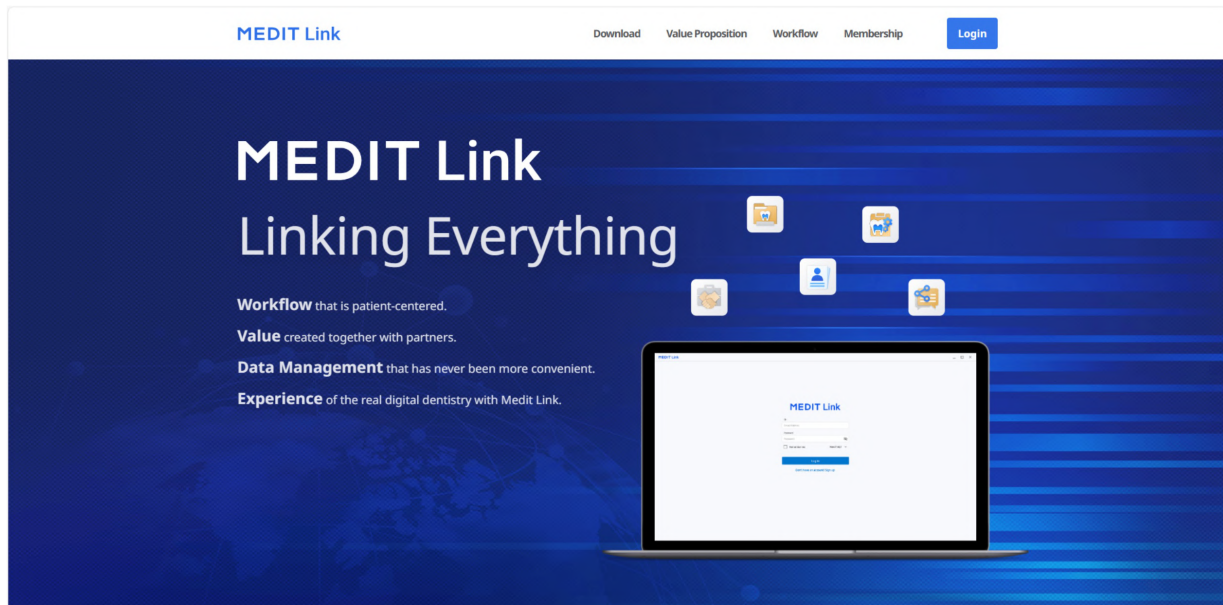

Opmerking

Meld u aan voor Medit Link China op www.meditlink.cn.

Aanmelden

Om de service van Medit Link te gebruiken, moet u eerst een account aanmaken. U kunt de functies van Medit Link gebruiken nadat u als praktijk of laboratorium een account heeft aangemaakt.

Gebruikers kunnen een van de volgende vier accounttypen selecteren om zich te registreren voor een lidmaatschap en gebruik te maken van de dienst met volledige of beperkte functionaliteit en privileges, afhankelijk van het gekozen accounttype.

- Praktijk - Beheerder
- Praktijk - Lid
- Lab - Beheerder
- Lab - Lid

De beheerder is meestal een vertegenwoordiger van uw organisatie en heeft volledige toegang tot alle functies en diensten van Medit Link. Het ledenaccount heeft daarentegen beperkte toegang.

Volg deze stappen om u aan te melden voor het lidmaatschap:

1. Klik op "Heeft u nog geen account? Meld u aan." op de inlogpagina.

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Klik na het lezen van de beschrijvingen op de knop "Registreren" voor het gewenste accounttype.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

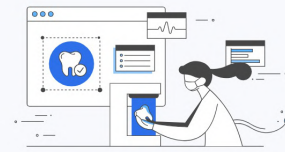

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Het volgende registratieformulier verschijnt.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Voer de naam van de praktijk of het laboratorium in en doe vervolgens, afhankelijk van het gewenste accounttype, het volgende:
 - Als u zich registreert als beheerder, klikt u op "Controleer beschikbaarheid" om te zien of de ingevoerde naam beschikbaar is.
 - Als u zich als lid registreert, klikt u op "Zoeken". De beheerder moet uw organisatie al hebben geregistreerd voordat u zich aanmeldt.
5. Vul de rest van het registratieformulier in en klik op "Registreren".

Opmerking

Indien u tijdens het registratieproces akkoord gaat met het ontvangen van marketinginformatie, zult u nuttige informatie ontvangen over de producten en diensten van Medit.

6. Er wordt u een verificatiemail toegestuurd.
7. Om het registratieproces te voltooien, moet u uw e-mailadres verifiëren door op de ontvangen link te klikken.

Login en welkomspagina

1. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in op de inlogpagina en klik op "Inloggen".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. De volgende pop-up verschijnt als u uw bedrijfsgegevens niet hebt ingevuld.

Welcome, stage-test-wh!

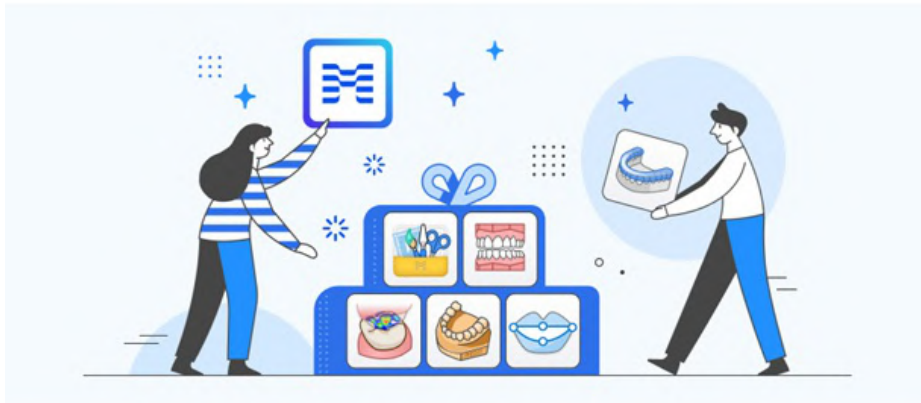

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Opmerking


Om gebruik te maken van de diensten van Medit Link, dienen de gegevens van uw praktijk of laboratorium te worden ingevoerd via het beheerdersaccount.

3. Klik op de knop "Ga naar mijn praktijk" of "Ga naar mijn lab" en vul de gegevens van uw praktijk of laboratorium in, waaronder de bedrijfsnaam, cover/logo, aangeboden diensten, kantooradres, kantoornummer, etc.
4. U kunt de informatie die op de welkomspagina is ingevoerd op elk gewenst moment bewerken via het tabblad My Info > Mijn Praktijk of Mijn Lab in Medit Link Web.

Dashboard

Dashboard overzicht

U kunt de statistieken van al het werk dat op Medit Link is gedaan bekijken in de vorm van grafieken en diagrammen, zowel in de Medit Link App als op het web.

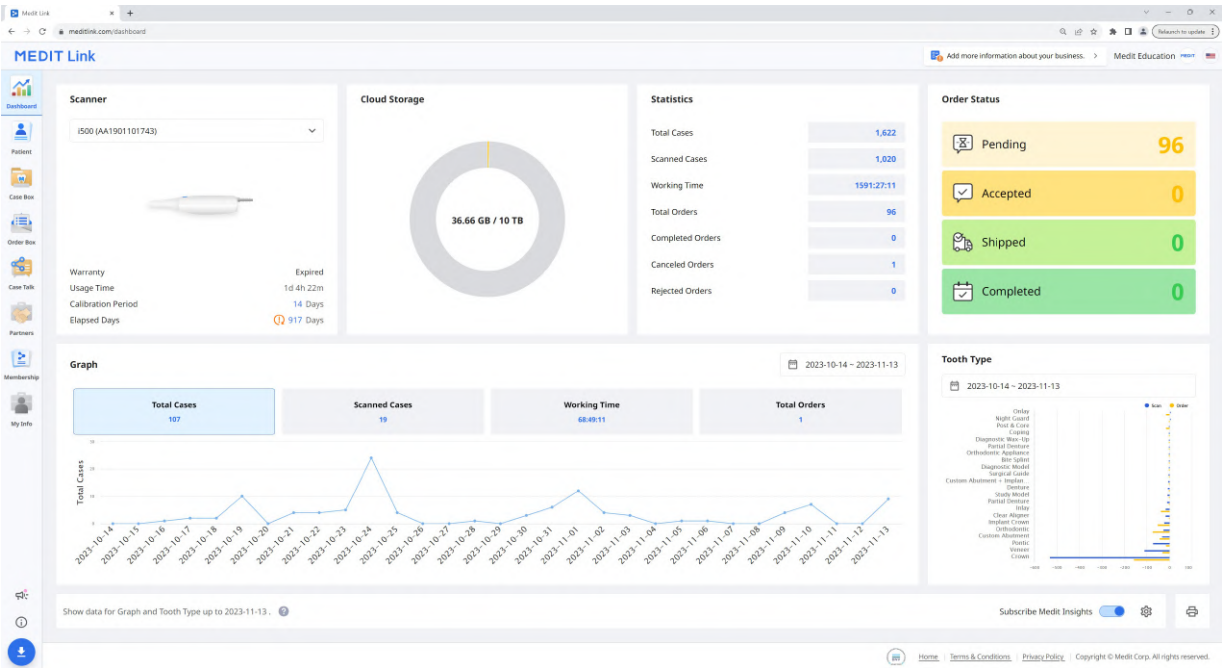

Grafieken en diagrammen in het dashboard tonen statistieken voor al het werk dat in Medit Link is gedaan.

Scanner	Biedt informatie over de actieve scanners, waaronder garantie, gebruikstijd van de scanner, het kalibratie-interval en de verstrekte kalibratietijd.
Cloudopslag	Toont de totale capaciteit van de cloud en de hoeveelheid die in gebruik is.
Statistieken	Biedt statistieken over dossiers op basis van de status.
Orderstatus	Biedt statistieken over dossiers op basis van de orderstatus.
Grafiek	Grafiekinformatie per periode.
Tandtype	Geef statistieken over het aantal scans en orders per behandelingsinformatie.


Medit Insights

Medit Insights is een rapportageservice die u helpt bij het analyseren van uw gebruikstatistieken.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Medit Insights

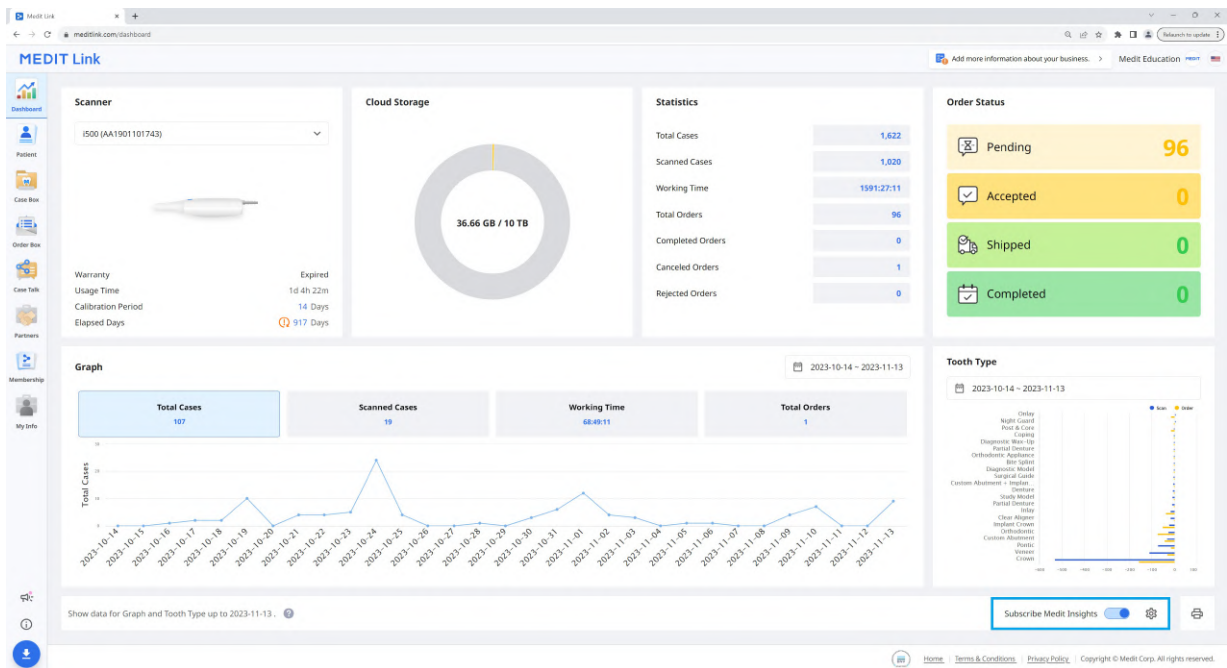

Abonneer op Medit Insights

U kunt op de tweede dag van elke maand een rapportageemail ontvangen. Er is geen extra aanmeldingsproces nodig. Schakel gewoon "Abonneren op Medit Insights" in.

Als u niet het e-mailadres gebruikt dat u voor uw Medit Link-account heeft gebruikt, kunt u een ander e-mailadres instellen om Medit Insights te ontvangen.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Op de tweede dag van elke maand ontvangt u een e-mail met statistieken, zoals hieronder weergegeven.

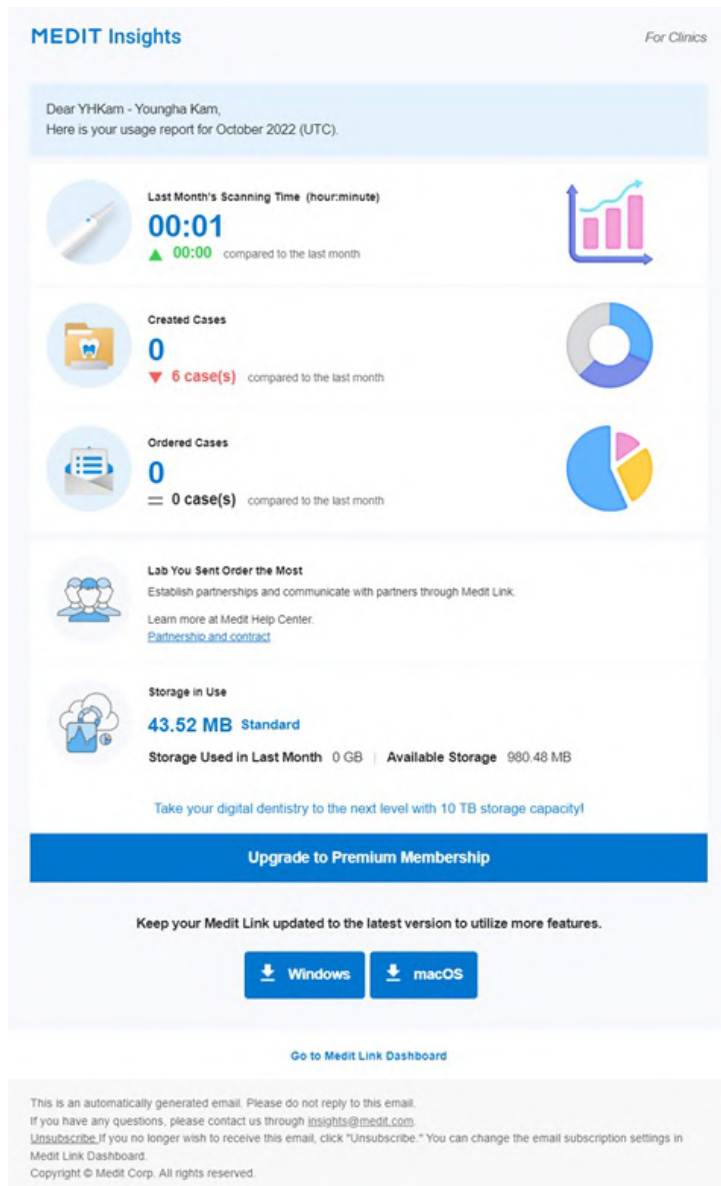

Banner	Medit biedt hier nuttige tips en informatie. * Als u de banner niet wilt zien, verwijdert u het vinkje bij Marketing- en promotieovereenkomst in Mijn Info > Mijn account.
Statistische informatie	De statistische informatie wordt weergegeven, zoals scantijd, aangemaakt dossiers, meest bestelde lab, etc.
Medit Link Download	De knop bevat de downloadlink van Medit Link.
Dashboard	Alle statistische informatie is gebaseerd op de informatie op uw Dashboard. Bekijk meer details op het Dashboard.

Uitschrijven voor Medit Insights

Schakel "Abonneren op Medit Insights" uit op het Dashboard of klik op "Uitschrijven" in de ontvangen e-mail.

Patient

U kunt dossiers beheren op basis van patiëntnaam en Patiënt-ID.

Alle patiënten die geregistreerd zijn via de Medit Link-app worden in een lijst weergegeven, waardoor het eenvoudiger wordt om patiënten en hun dossiers te beheren.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hk.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 덴티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Patiënt zoeken

1. Kies uw zoekcriteria; Patiëntnaam of Patiënt-ID in het vervolgkeuzemenu rechtsboven in de patiëntenlijst.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Voer de patiëntnaam of het patiënt-ID in om te zoeken aan de hand van de geselecteerde zoekcriteria.
3. Alleen patiënten met de ingevoerde patiëntnaam of patiënt-ID worden in de lijst weergegeven.

Case Box/Work Box

De Case Box (praktijk) of Work Box (lab) toont alle dossiers die de gebruiker op de Medit Link-applicatie heeft aangemaakt. Bekijk bestanden via een webbrowser zonder dat u een apart programma hoeft te installeren.

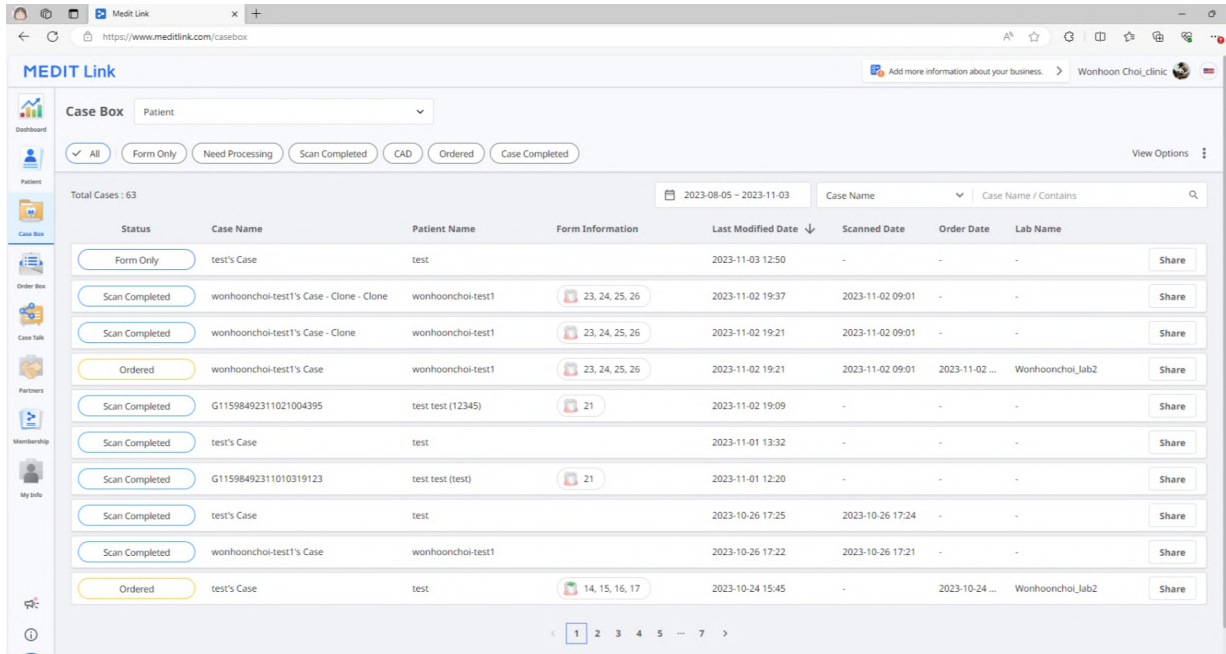


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A date range selector shows '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar is labeled 'Case Name / Contains'. The table below lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button. The table shows 63 total cases.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Dossiers filteren

Op patiënt filteren

U kunt dossiers op patiënten filteren. Dit is nuttig wanneer u dossiers voor specifieke patiënten nodig heeft.

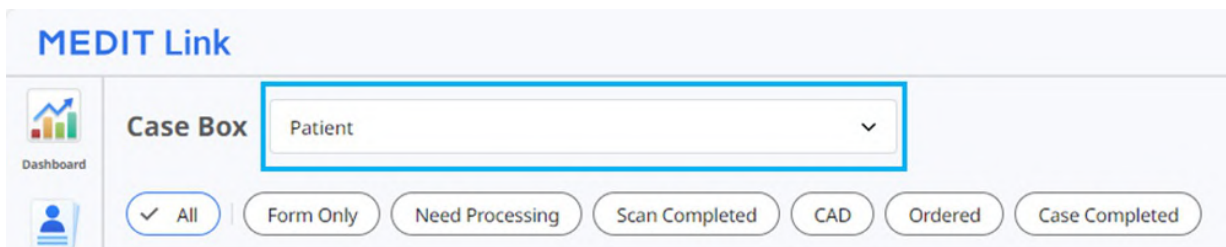

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Voer een patiëntnaam in het zoekveld in.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Selecteer een patiënt uit de lijst met zoekresultaten.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Alleen dossiers van de geselecteerde patiënten worden in de lijst weergegeven, waardoor het eenvoudiger wordt om de dossiers te vinden waarmee u wilt werken.

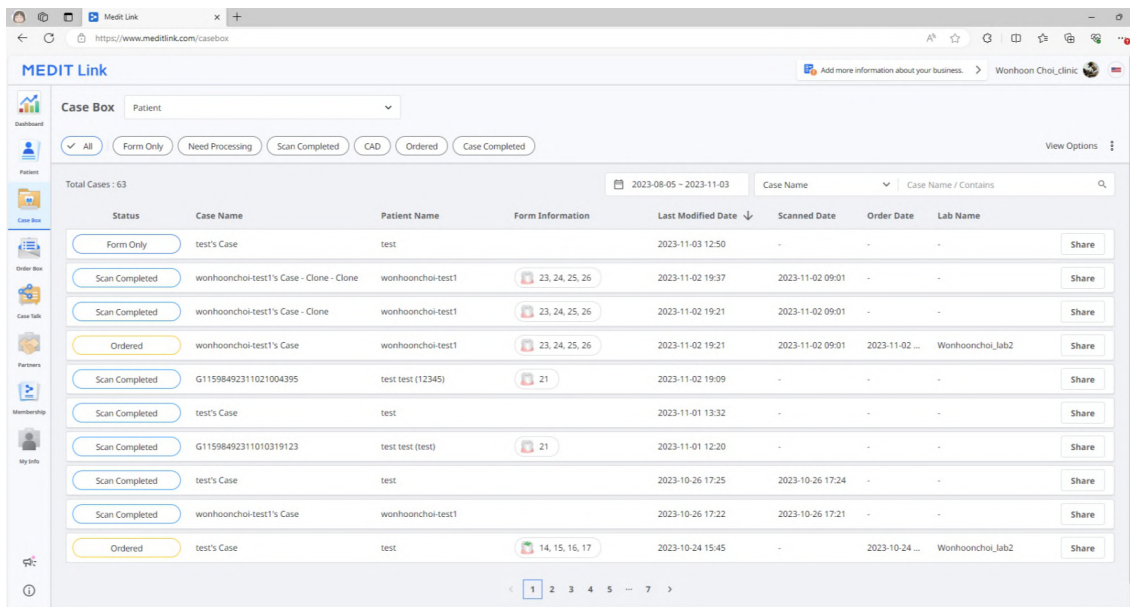

Filter op status

U kunt dossiers filteren op basis van hun status.

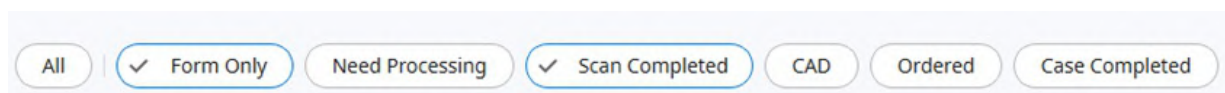

- De gebruiker kan op de gewenste status klikken. De browser toont alleen dossiers met de gekozen status.
- De gebruiker kan meerdere statussen tegelijk selecteren.

De volgende statutypen zijn beschikbaar op basis van het type account:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Filter op duur

U kunt dossiers filteren en weergeven die voor het laatst werden gewijzigd binnen de door u ingestelde periode.

1. Klik op de periodefilter.



2. Selecteer het tijdbereik.

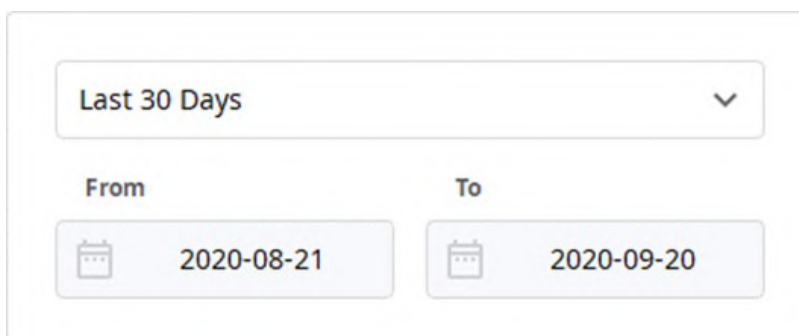

- Alle: Toont alle dossiers.

- Aangepast bereik: Geef begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die binnen die periode zijn gewijzigd.
- Vandaag: Toont dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- Gisteren: Toont dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 30 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 90 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 90 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Deze maand: Toont de dossiers van deze maand.
- Vorige maand: Toont de dossiers van de vorige maand.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Filter op zoekopdracht

U kunt de zoekmogelijkheden gebruiken om eenvoudig en snel de gewenste informatie op te zoeken.


Case Name ▾
|
Case Name / Contains

🔍

De volgende zoekopties zijn beschikbaar op basis van het type account:

Case Box (Clinic)	Dossiernaam, patiëntnaam, patiënt-ID, laboratoriumnaam
Work Box (Lab)	Dossiernaam, patiëntnaam, praktijknaam, Order-ID

Dossierdetails

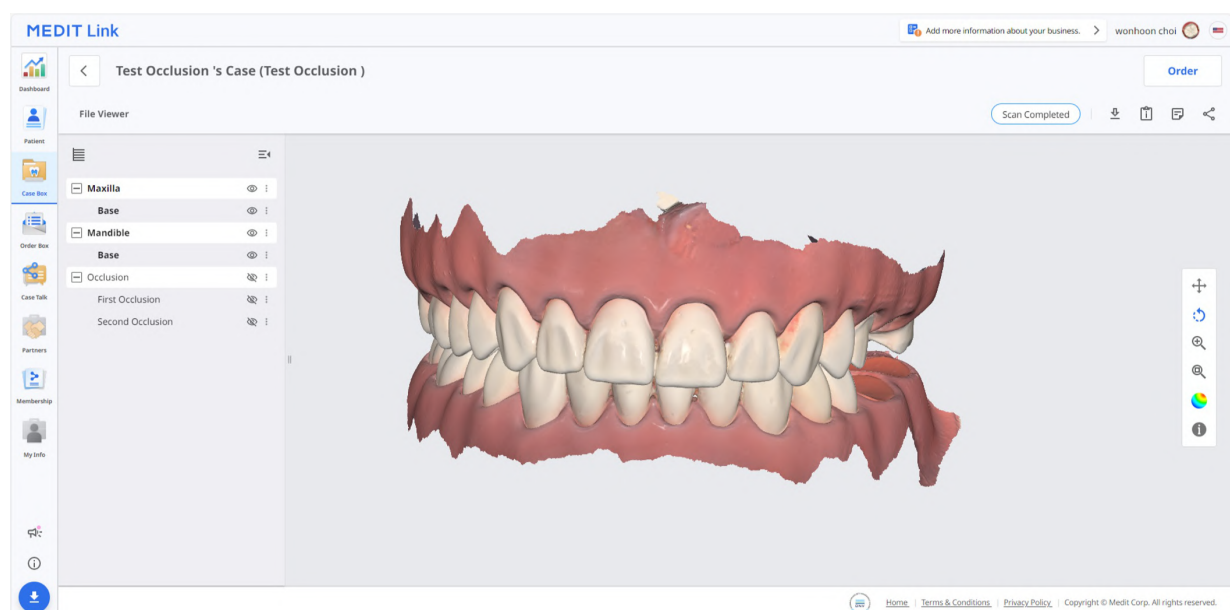

In de Case Box/Work Box vindt u de volgende instrumenten voor dossierbeheer.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.
	Ga naar Order Box/In Box	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Downloaden	Download bestanden in het dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.
	Delen	Maak een link om te delen. Gebruikers met de link hebben toegang tot de 3D-gegevens in een browser zoals Chrome, Firefox of Safari, zonder dat er extra programma's geïnstalleerd hoeven te worden.

Order Box/In Box

De Order Box (clinic) of In Box (lab) toont bestelde dossiers op de MEDIT Link-applicatie.

Orderdetails

The screenshot displays the MEDIT Link application interface. The top header shows the application name and a user profile. The sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)'. It features a 'Order' tab and a 'File Viewer' tab. The 'Order' tab displays order details such as Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-20 PM 02:08), Requested Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15), and Expected Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15). The 'File Viewer' tab shows an 'Order List' table with columns for No., Type, Method, Material, and Shade. The table contains four rows of data for Inlay orders.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- 1 Toon de dossiernamen en de patiëntnamen.
- 2 Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen).
- 3 Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbekijker
- 4 Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie en tags, etc.
- 5 Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum, en de notitie en tags.
- 6 Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus.


Tabbladen in Order Box/In Box

Bestelling	Bestandenbekijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals Order-ID, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De Bestandsweergave toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.

De gebruiker kan via "Case Talk" in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

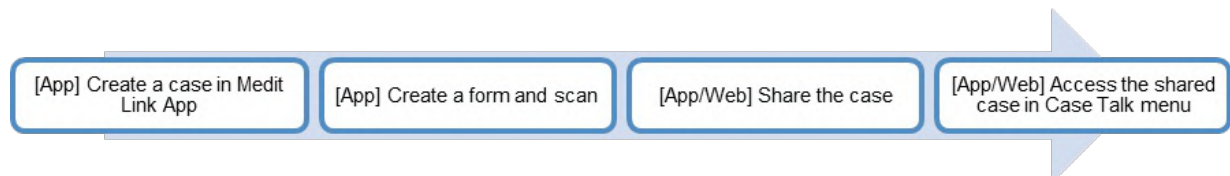


Gedeelde dossiers kunnen worden bekeken via een webbrowser zonder dat er een apart programma geïnstalleerd hoeft te worden. Dit maakt eenvoudige communicatie over 3D-gegevens op verschillende apparaten mogelijk.


Een Case Talk aanmaken

U kunt een gedeelde link maken naar een dossier die is aangemaakt in Case Box/Work Box.

1. Zoek een dossier dat u wilt delen en klik op de knop "Delen" aan de rechterkant.

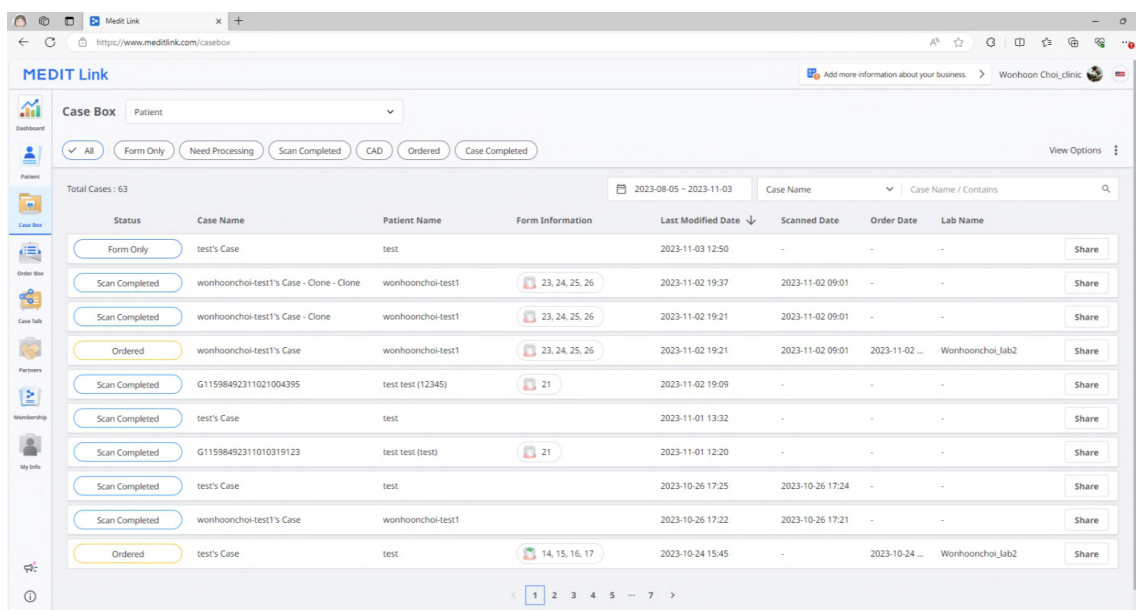

2. Selecteer de bestanden die u wilt delen.

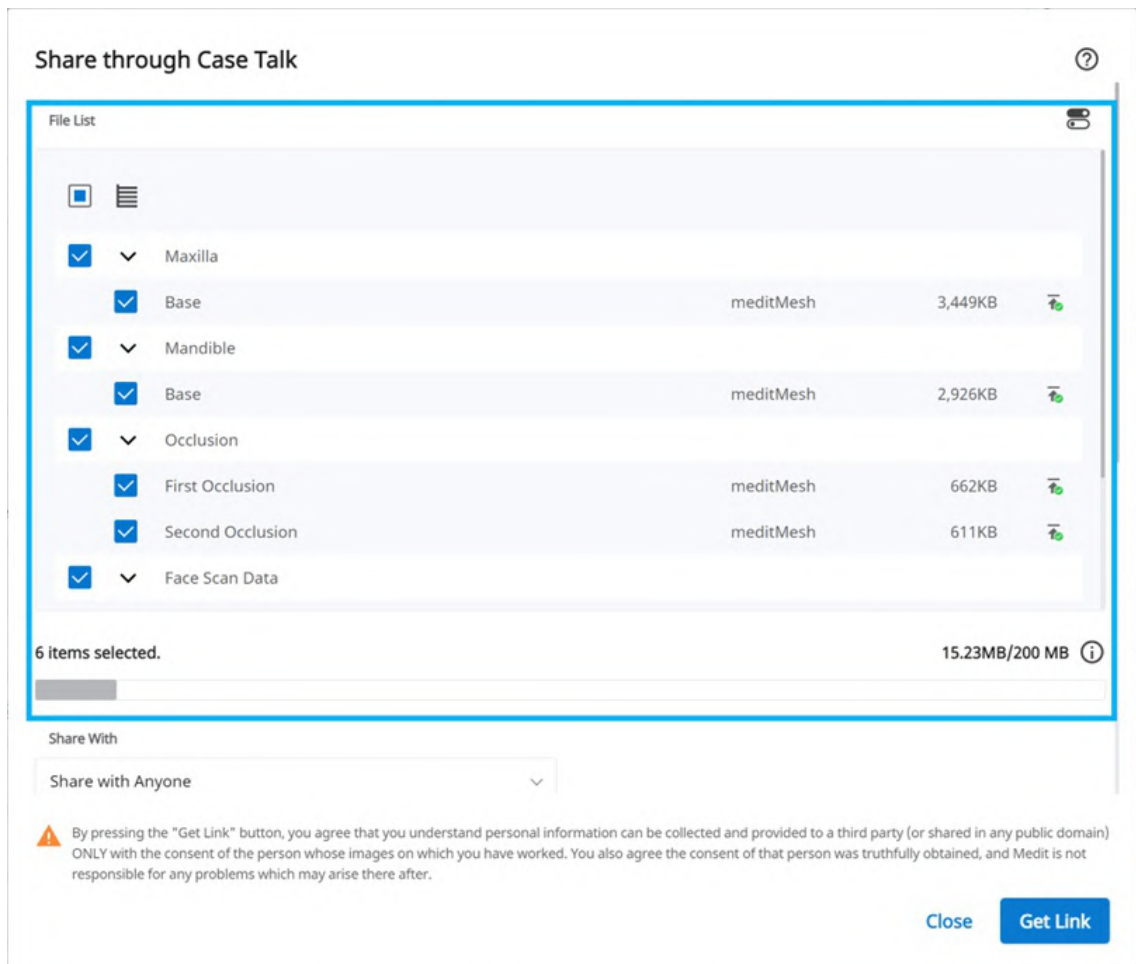

3. Stel het type toestemming voor delen en de opties voor delen in.
4. Klik op "Link aanmaken" om een gedeelde link te maken.

Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

37

Delen met	• Deel met iedereen Maakt een gedeelde link. U kunt de bestanden met iedereen delen. • Deel met specifieke personen Maakt een gedeelde link en stuurt deze naar specifieke personen.
Deel via	Als u "Deel met specifieke personen" selecteert, kunt u de link op verschillende manieren met specifieke mensen delen. • E-mailadres • SMS • Partners
Vervaldatum	Stel de vervaldatum van de link in. Nadat de link is verlopen, hebben de mensen met wie u de link heeft gedeeld geen toegang meer tot de bestanden. U kunt de vervaltijd tot 90 dagen na vandaag verlengen.
Pincode	Stel een 6-cijferige toegangscode in om de gegevens te beveiligen.
Patiëntnaam delen	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle mensen met de link de naam van de patiënt zien.
Verleen download toestemming	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle gebruikers met de link de bestanden downloaden.
Opmerkingen toestaan	• Als u deze optie aanvinkt, kunt u communiceren via de gedeelde link. • Als u de optie uitschakelt, kan de ontvanger uw opmerkingen bekijken, maar geen eigen opmerkingen toevoegen.
Opmerking	U kunt een bericht achterlaten in de opmerkingen.

Case Talk details

U kunt bestanden in het gedeelde dossier zien. De volgende functies zijn beschikbaar op de detailpagina van Case Talk.

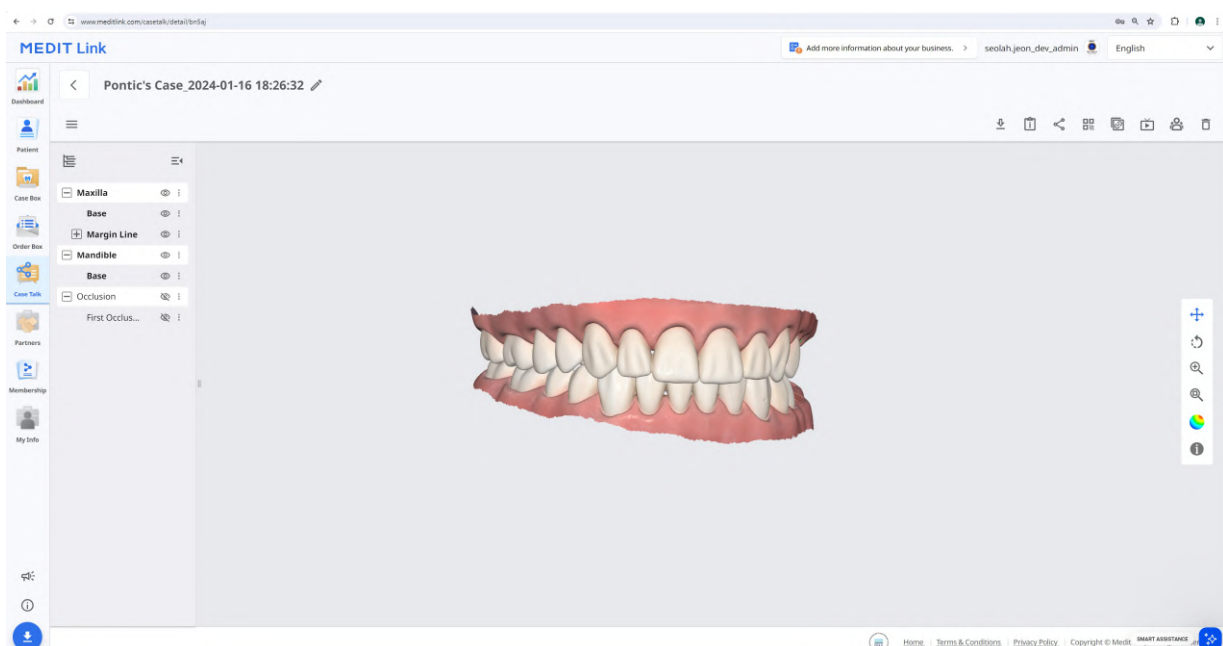

	Downloaden	Download alle bestanden in het dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelinstelling.
	QR-code	Deel het dossier met een QR-code.
	Kopieer link	Kopieer de gedeelde link naar het klembord. De gekopieerde link toont de gedeelde bestanden in uw webbrowser.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die toegang hebben tot de gedeelde link.
	Wissen	Verwijder de gedeelde link. Een verwijderde gedeelde link is niet langer toegankelijk.

Opmerking


De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Web Viewer

U kunt gedeelde gegevens bekijken via Case Talk in een webbrowser.

Het is mogelijk om te communiceren met mensen die toegang hebben tot de link door annotaties en opmerkingen te plaatsen.

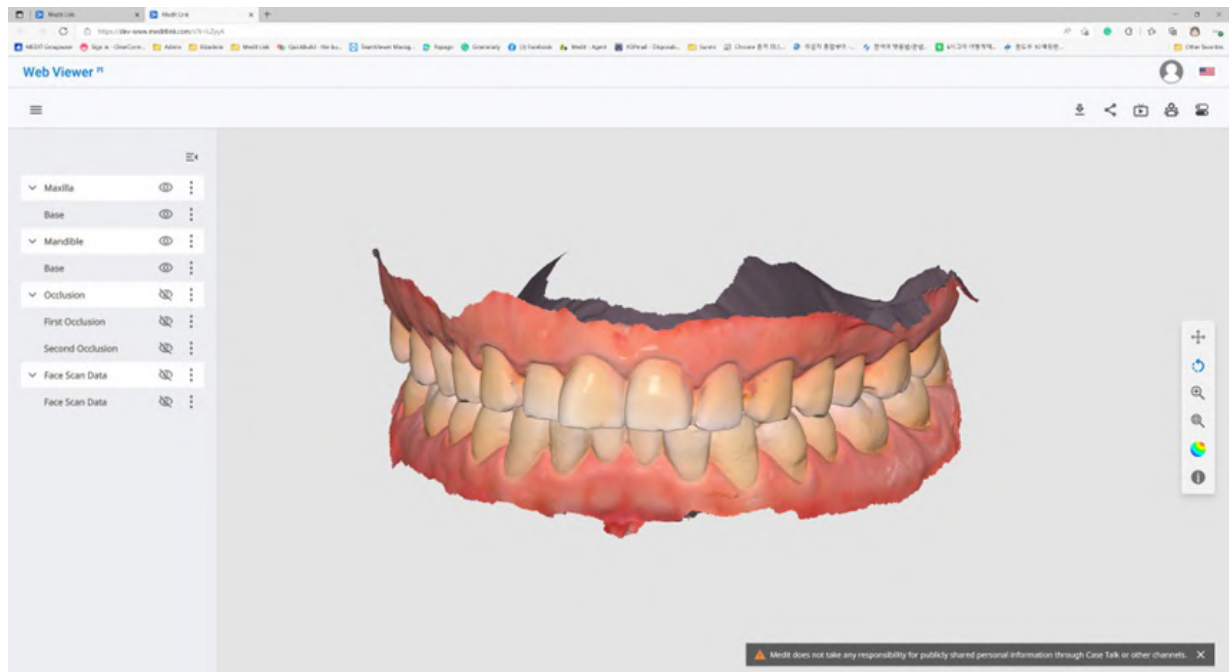

	Downloaden	Download alle bestanden in dit dossier naar de pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelininstellingen.
	QR-code	Deel het dossier met een QR-code.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die verbonden zijn met de gedeelde link.
	Tandnummering	Wijzig het systeem voor tandnummering.


Opmerking

De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Annotatie

Voeg annotaties toe aan een specifieke locatie op het 3D-model. Iedereen met de link kan de door u toegevoegde annotaties bekijken.

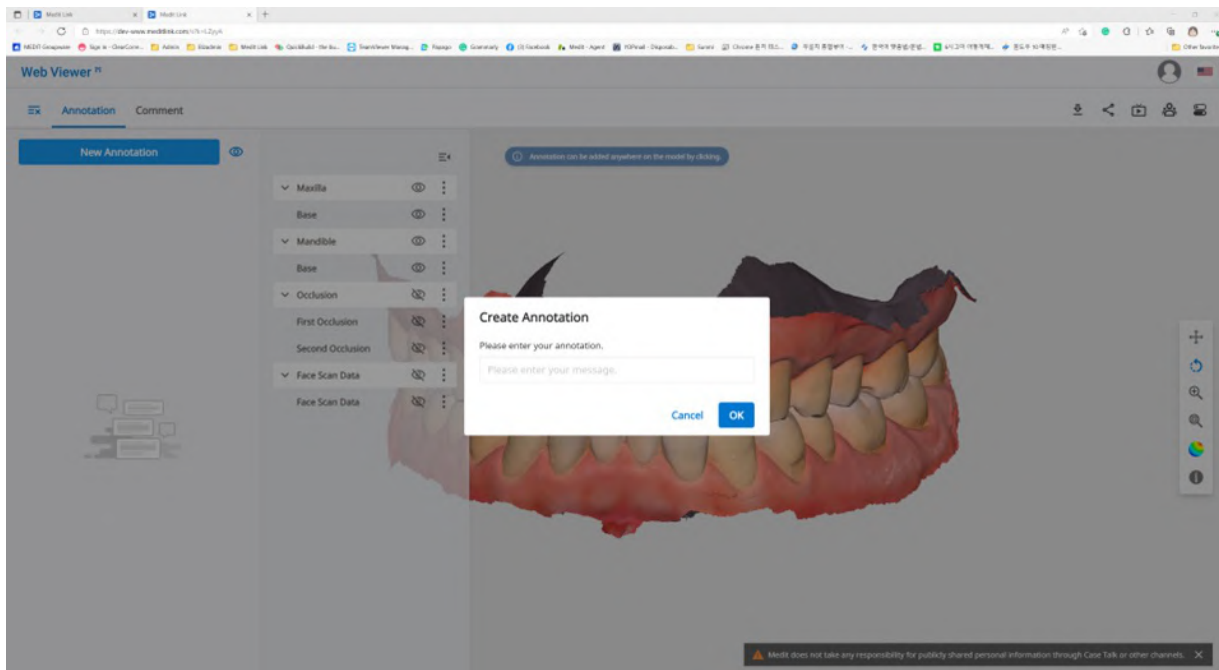


Opmerking


De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Annotatie

1. Zoek het menu in de linkerbovenhoek en selecteer het tabblad "Annotatie". Gebruik de knop "Nieuwe annotatie" om met één klik overal op de gegevens een annotatie toe te voegen.
2. Typ het bericht en klik op "OK" om het op te slaan.

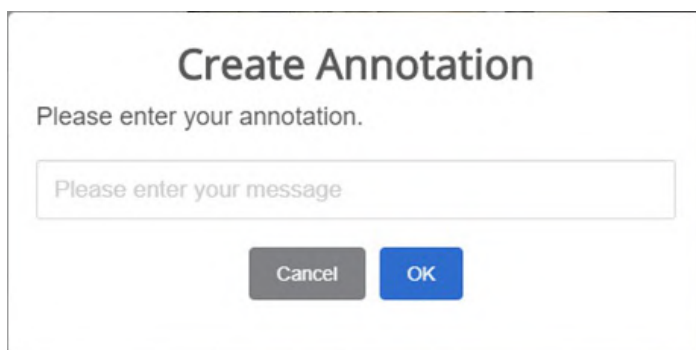
 This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. U kunt annotaties gebruiken als een eenvoudig communicatiemiddel. Klik op de aangemaakte annotatie om een antwoord in te voeren en druk op "Verzenden".

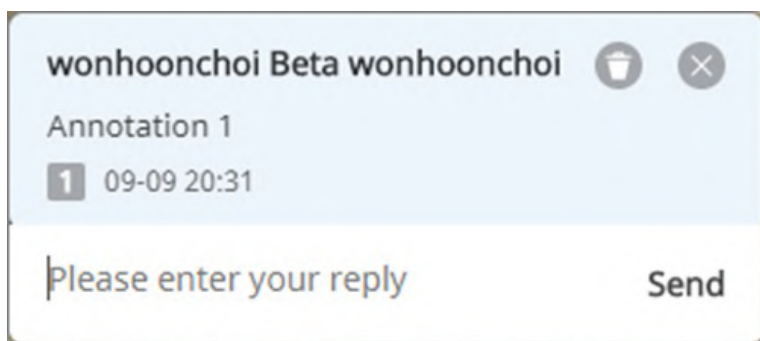
 This is a screenshot of an annotation card. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with a trash icon and a close icon. Below this is 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Opmerkingen

U kunt communiceren met gebruikers die toegang hebben tot de link via het tabblad "Opmerking" in het Web Viewer-menu.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Opmerking

Realtime scherm delen


U kunt uw scherm in realtime delen.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live

1. Klik op "Live" om uw Web Viewer-scherm met de verbonden gebruikers te delen.

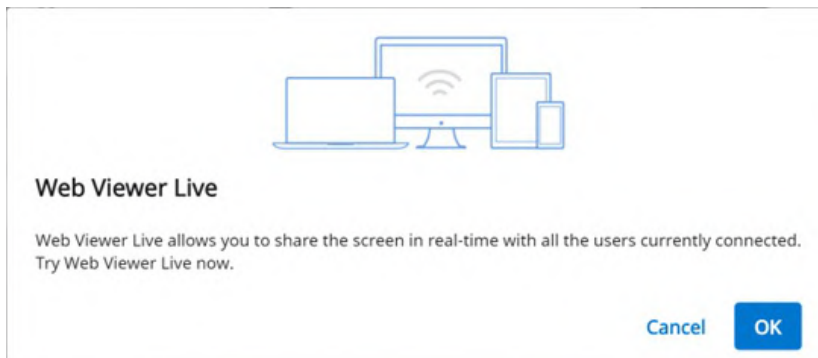


2. Klik op "OK" om uw scherm te delen.
3. Andere mensen die toegang hebben tot de link moeten het delen van het scherm accepteren.
4. Het scherm van de persoon die het scherm deelt, wordt synchroon weergegeven op het scherm van de persoon die het verzoek heeft ontvangen.


Gegevensboom

Alle gegevens worden ingedeeld en weergegeven op basis van kenmerken in de gegevensboom. U kunt gegevens tonen of verbergen, de ondoorzichtigheid aanpassen, etc.

Gegevensboom beheren

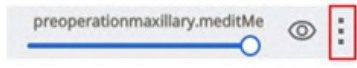Toon/Verberg	Klik op het "oog"-pictogram om gegevens te tonen of te verbergen. Beheer de zichtbaarheid van gegevens als groep of individueel bestand.
Ondoorzichtigheid	Beweeg de muis over een zichtbaar element om de schuifbalk voor ondoorzichtigheid weer te geven. Beweeg de schuifbalk heen en weer om de transparantie van uw gegevens te wijzigen. 
Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevindt zich aan de rechterkant van elk element op de gegevensboom. Het bevat de volgende opties:  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens behalve de huidige gegevens. • Verbergen: Verberg de huidige gegevens.

3D-model beheren

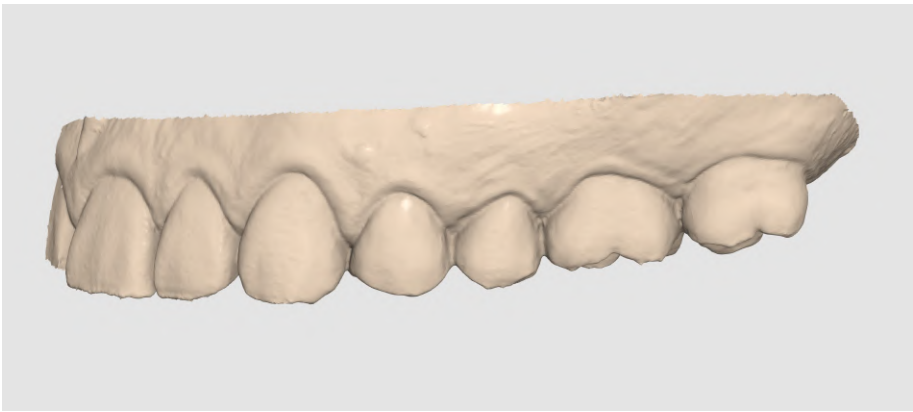+	Verplaatsen	Verplaats het model.
o	Roteren	Roteer het model.
~	In-/uitzoomen	Zoom in en uit op het model.
🔍	Zoom aanpassen	Plaats model in het midden van het scherm.
•	Geg eve nsw eer gav e mo dus	Bekijk de gegevens in kleur met een matte afwerking (Phong-weergave). 
•		Bekijk de gegevens in één kleur. 

Partners

U kunt zoeken naar potentiële partners om een samenwerking mee aan te gaan en de lijst met huidige partners bekijken.


Opmerking

Diensten die gebruik maken van Google Maps zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

Zoek naar partners


U kunt Medit Link-gebruikers zoeken op basis van hun bedrijfsnaam en/of adres.

In de zoekresultaten kunt u een samenwerkingsverzoek sturen naar een bedrijf waarmee u zou willen samenwerken.

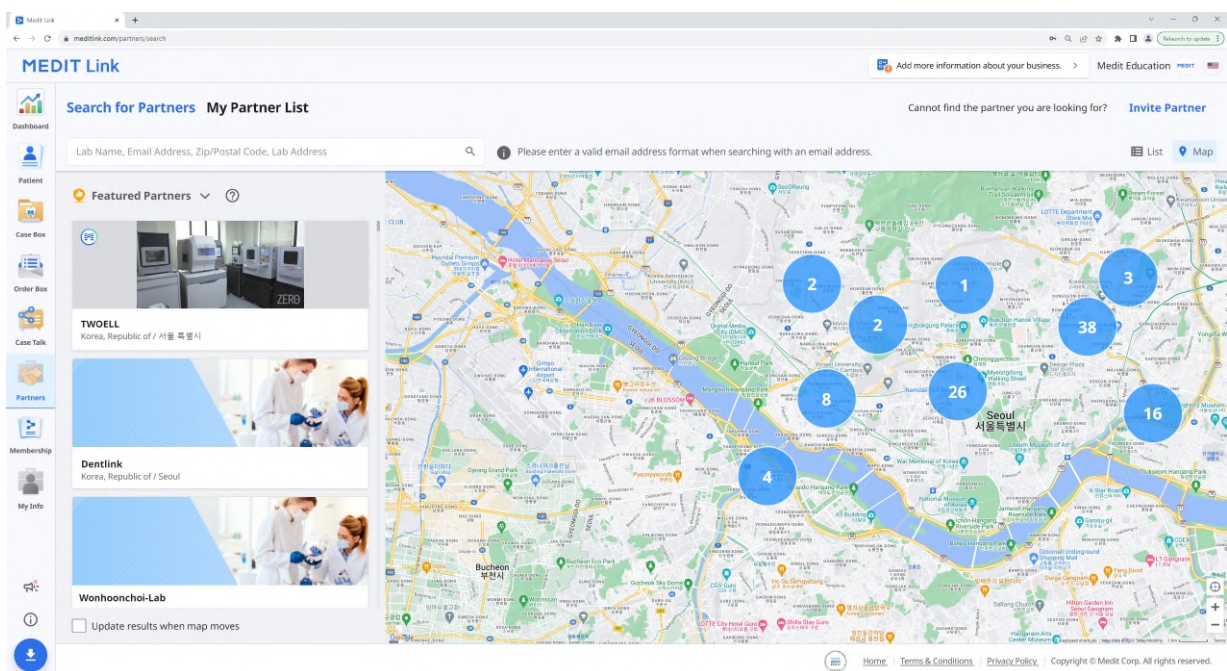

Mijn partnerlijst

U kunt uw huidige samenwerkingsverbanden met al uw bestaande partnerbedrijven bekijken in het gedeelte "Mijn partnerlijst".

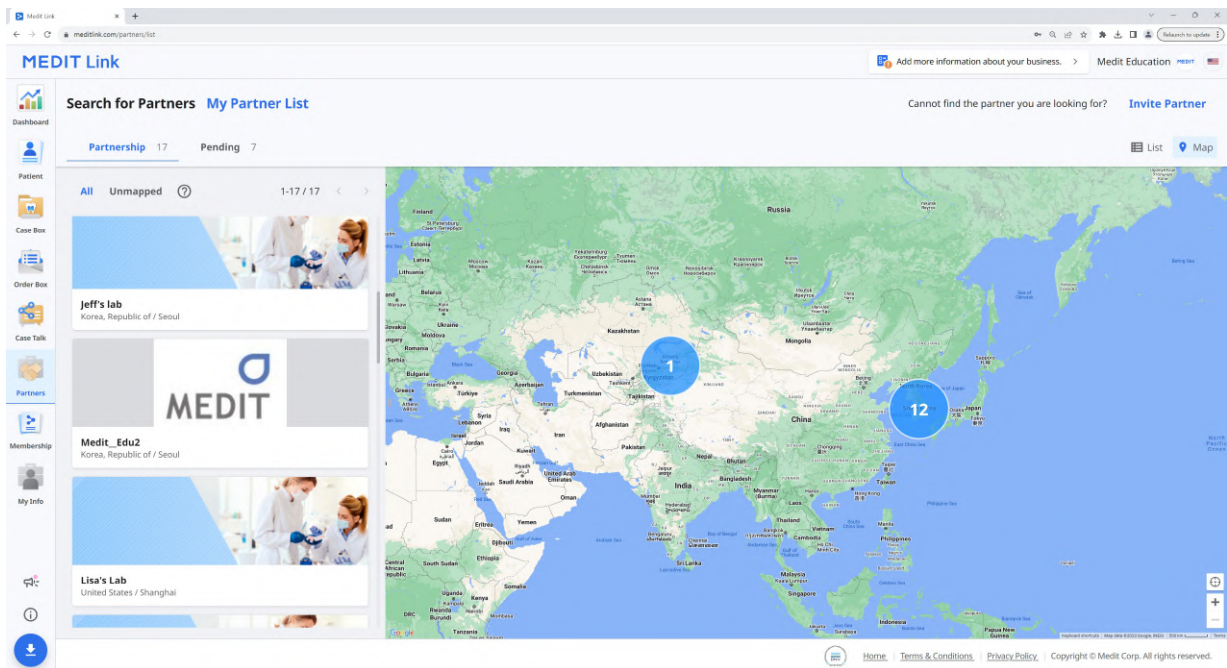

Partner uitnodigen

Als u met een praktijk of laboratorium wilt samenwerken, kunt u deze uitnodigen om lid te worden van Medit Link. Het samenwerkingsverband wordt automatisch gevormd zodra de uitnodiging wordt geaccepteerd.

1. Klik op "Partner uitnodigen" linksboven in uw scherm.
2. Voer het e-mailadres in van het bedrijf waarmee u wilt samenwerken en stuur een uitnodiging met een verzoek tot samenwerking.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Zodra de uitgenodigde organisatie de uitnodiging accepteert en zich aanmeldt voor Medit Link, wordt het samenwerkingsverband automatisch tot stand gebracht.

Membership

Lidmaatschap

The screenshot displays the MEDIT Link web interface. At the top, the 'MEDIT Link' logo is on the left, and user information 'seolahjeon_' and 'English' are on the right. Below the header, navigation tabs include 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The left sidebar contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership (selected), and My Info. The main content area is divided into two sections. The left section, 'Medit Cloud Storage Plan', shows the '2 GB Plan' and '10 TB Plan' tabs. The '10 TB Plan' is selected and highlighted as a 'Free (Promotion)'. It lists benefits: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A 'Subscribe' button is present. Below this, '10 TB Plan Benefits' are listed, including a '10 TB Plan' with a 'qqqq' code and an expiration date of '2025-06-26'. A note states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More'. The right section, 'Cloud Storage', shows a 'Set Period' dropdown set to '2018-01-01 ~ 2025-02-17'. A donut chart indicates '3.46 GB / 10 TB' usage. Below the chart, a table lists storage items: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (52.36 GB), and 'Result Files & Attachments' (3.46 GB). Each item has a checkbox and a 'Delete' button. The footer contains links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © MEDIT Co., along with a Korean text '스마트 의료'.

Medit Cloud Storage Plan

U kunt zien wat elk plan biedt, inclusief kortingsbonnen en vouchers, evenals uw huidige abonnementsstatus. U kunt uw abonnement op elk moment upgraden of opzeggen.

MEDIT Link

Dashboard
Patient
Case Box
Order Box
Case Talk
Partners
Membership
My Info

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan
10 TB Plan

Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)
Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link heeft de volgende cloudopslagplannen:

2 GB Plan

- Gratis standaardplan voor alle aangemelde gebruikers
- 2 GB cloudopslag
- Voor nieuwe gebruikers

10 TB Plan

- Betaald plan
- 10 TB cloudopslag
- Voor gebruikers met veel dossiers en verschillende soorten gegevens
- Een maand gratis uitproberen


	2 GB Plan	10 TB Plan
Cloudopslag	2 GB	10 TB
Maandelijks kosten	Gratis	\$ 9,99/maand
* Ruwe gegevens tellen niet mee voor de gebruikte ruimte bij cloudopslag.		

Opmerking

De lidmaatschapsplannen zijn beschikbaar voor Medit Link China. U kunt het 10 TB Plan gratis gebruiken tot aan de officiële release van de functie.

Cloudopslag

In het rechtergedeelte kunt u uw cloudopslag beheren.

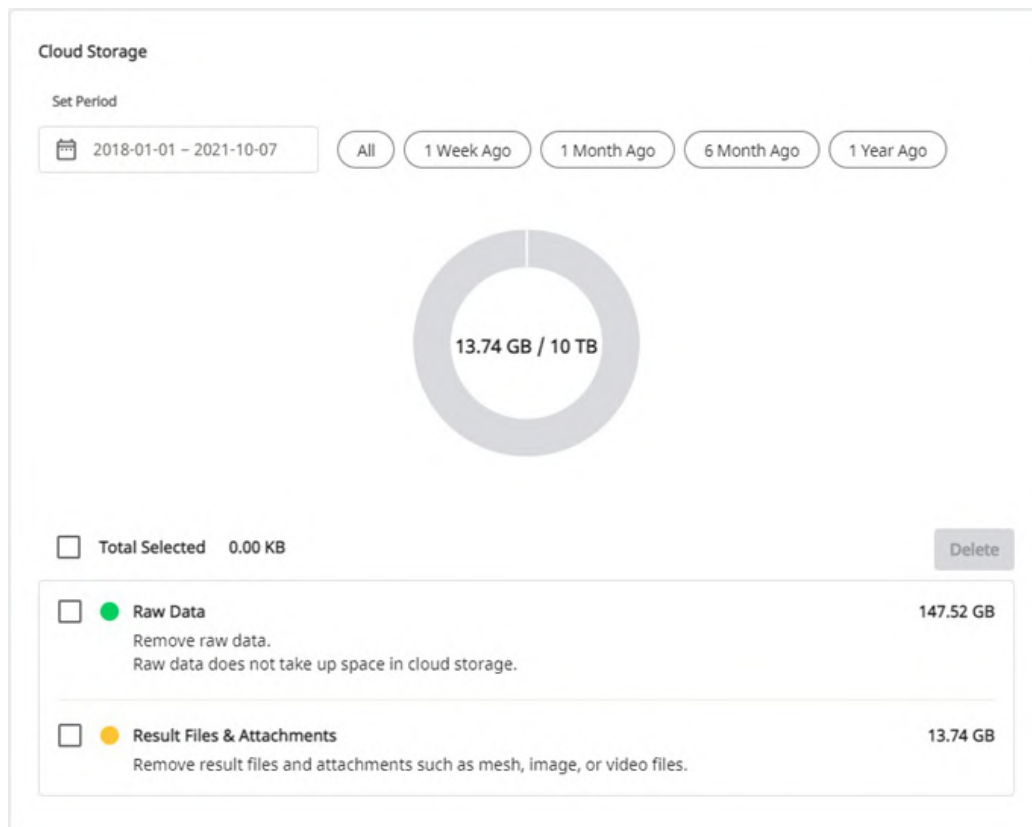

Periode instellen	Stel de specifieke periode in om gegevens te verwijderen die binnen dat tijdsbestek zijn aangemaakt. • Alle: Bekijk alle bestanden. • 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt. • 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt. • 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt. • 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.
Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslagruimte in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. Indien nodig kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren, bijvoorbeeld door ze te verwijderen om de privacy van de patiënt te beschermen.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloud. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om ruimte vrij te maken.

Abonneren

Als u momenteel het 2 GB Plan of het 10 TB Plan met een inwisselcode gebruikt, kunt u zich abonneren op het 10 TB Plan.

De betaling wordt voltooid via Stripe (www.stripe.com).

1. Ga naar Lidmaatschap > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan en klik op de knop "Abonneren".

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**

Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Controleer de beschrijving van het 10 TB Plan en klik opnieuw op "Abonneren".

Subscribe Membership



10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.

* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel

Subscribe

3. Controleer de prijs en voorwaarden en voer de informatie in die nodig is voor de betaling. Klik vervolgens op "Abonneren".

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

- \$9.99

100% off for a day

Tax ⓘ

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe

Terms

Privacy

4. De betaling kan enkele seconden in beslag nemen. Zodra de betaling is voltooid, ziet u een bevestigingsbericht.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice


Close

Abonnement annuleren

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen. Na het opzeggen kunt u het 10 TB Plan nog steeds gebruiken voor de resterende dagen van die betaalde maand. Uw plan wordt vanaf de volgende betaaldag gewijzigd naar het 2 GB Plan, en de cloudopslag wordt beperkt tot 2 GB. Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

1. Klik op "Opzeggen".
2. Klik op "Abonnement opzeggen".

Cancel Subscription

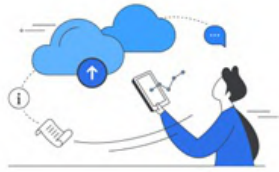

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Om te bevestigen dat u het abonnement wilt opzeggen, klikt u in het nieuwe pop-upvenster nogmaals op "Abonnement opzeggen".

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Uw abonnement is opgezegd.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Uw plan zal vanaf de volgende betaaldag worden gewijzigd in 2 GB Plan, en de cloudopslag zal worden beperkt tot 2 GB.
Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

Mijn abonnement

Via Mijn abonnement kunt u de details van uw huidige abonnement bekijken, u opnieuw abonneren of uw abonnement opzeggen. U kunt ook de betaalmethode wijzigen die zal worden toegepast vanaf de volgende geplande betaling.

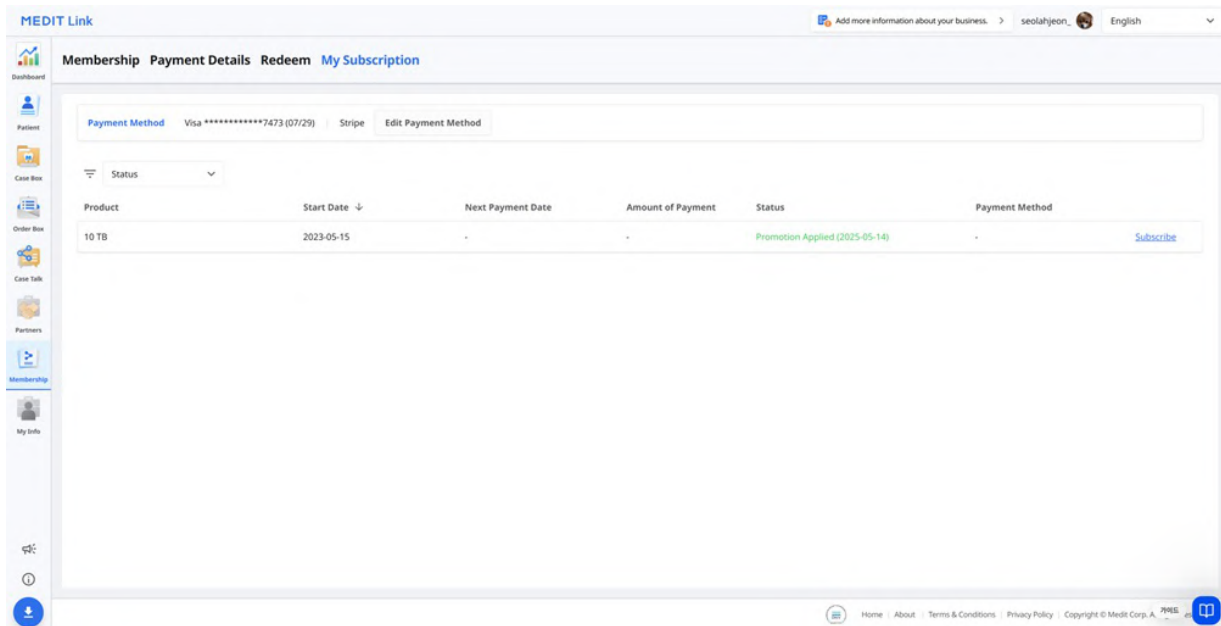

Details


Onderdeel	Beschrijving
Product	Toont het type abonnement.
Begindatum	Toont wanneer het abonnement of de promotie van start is gegaan.
Volgende betalingsdatum	Geeft de eerstvolgende betalingsdatum weer.
Betalingshoeveelheid	Geeft het te betalen bedrag weer.
Status	state-qualifier="leveraged-tm">Abonnement. • Actief: Het abonnement is actief. • Loopt af: Het abonnement wordt niet verlengd op de volgende betaaldatum en wordt geannuleerd. • Verlopen: Het abonnement is beëindigd. Promotie • Promotie toegepast: De promotiecode is nu actief. • Promotie in behandeling: De promotiecode moet nog geactiveerd worden. • Promotie verlopen: De promotiecode is verlopen.
Betaalmethode	Toont de laatste vier cijfers van de kaart die voor de betaling is gebruikt.

Opnieuw abonneren


Onderdeel	Beschrijving
Cloudopslagplan	Klik op de abonnementsknop om u opnieuw in te schrijven voor het 10 TB Plan.
App Abonnementsplan	Log in op de app om u opnieuw in te abonneren.

Een betaalmethode toevoegen

1. Klik op "Betaalmethode wijzigen".

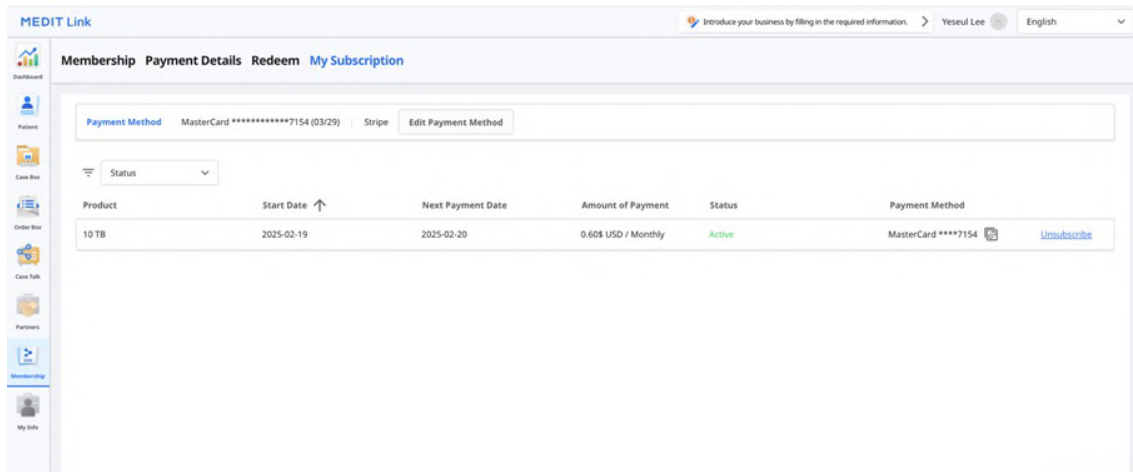

2. Klik op "Betaalmethode toevoegen".

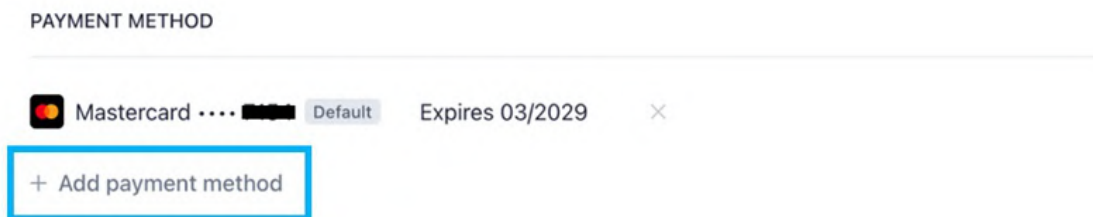

3. Voer de vereiste informatie in en klik op "Toevoegen".

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiration date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea


By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add


Go back

4. De nieuw toegevoegde betaalmethode wordt als standaard ingesteld en wordt voor de volgende betaling gebruikt.

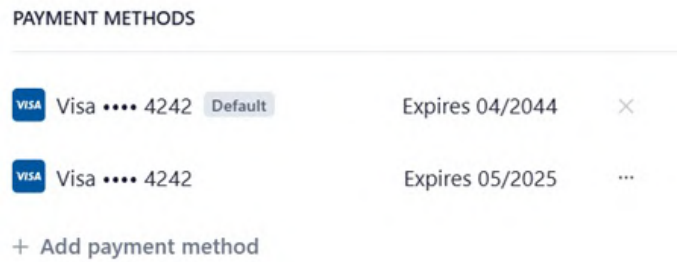


Een betaalmethode wijzigen

1. Klik op het uitgebreide menupictogram naast de betaalmethode die u wilt wijzigen in het dialoogvenster voor facturering.

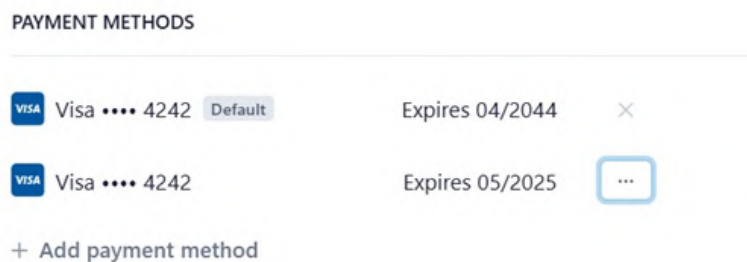

2. Klik op "Standaard maken" om de geselecteerde kaart als standaard betaalmethode in te stellen.

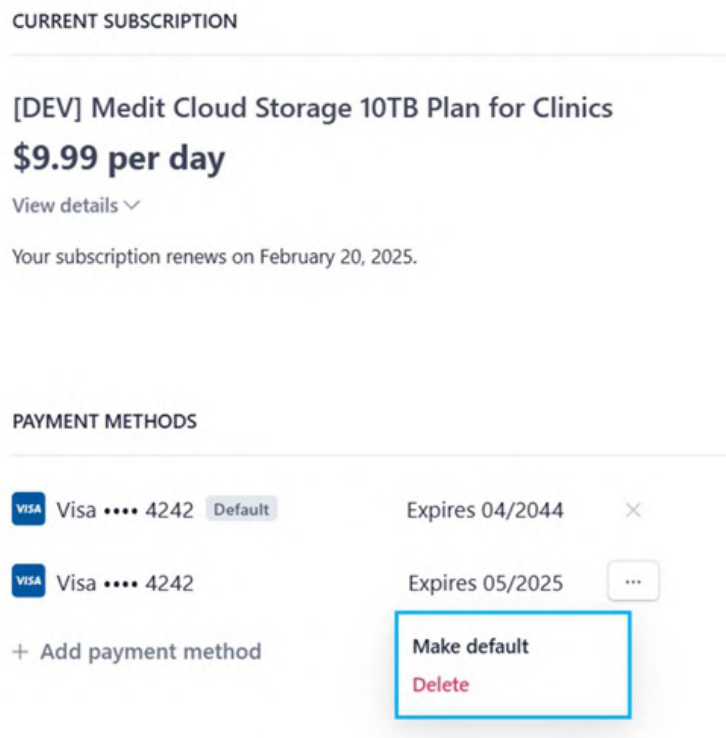

Inwisselen

U kunt een promotiecode inwisselen om gratis gebruik te maken van het 10 TB Plan.

Details

MEDIT Link
Add more information about your business.
seolah.jeon_dev_admin
English

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Register Redeem Code
Register

Redeem Code
All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4A87	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home
About
Terms & Conditions
Privacy Policy
Copyright © Medit Corp.
GUIDES

Onderdeel	Beschrijving
Product	Toont het plan waarop de promotie van toepassing is.
Promotie	Toont de naam van de promotie.
Codenummer	Toont het codenummer.
Registratiedatum	Toont de datum waarop de code is geregistreerd.
Van	Toont de startdatum van de promotie.
Tot	Toont de einddatum van de promotie.
Status	- Registered: De promotiecode is toegevoegd en nu beschikbaar. - Waiting: De promotiecode moet nog geactiveerd worden. - Activated: De promotiecode is nu actief. - Used: De promotiecode is verlopen.

Registreer actiecode

- Voer de actiecode in en klik op "Registreren".
- Lees de mededeling en kies "Registreren" of "Toepassen" in het pop-up venster.
 - Registreren:** Registreer de actiecode. U kunt de code na registratie activeren en later gebruiken.
 - Toepassen:** Registreer en activeer de code. De promotiekorting wordt onmiddellijk toegepast.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Activeer actiecode

U kunt meerdere actiecodes registreren, maar u moet de code die u wilt gebruiken activeren.

1. Klik naast de code die u wilt gebruiken op de knop "Activeren".
 - Als er geen code met de status "Activated" is, wordt de code die u kiest onmiddellijk toegepast.
 - Als er al een code is geactiveerd, verandert de nieuw geselecteerde code in de status "Waiting".
Wanneer de huidige geactiveerde actiecode verloopt, wordt de nieuwe actiecode met de status "Waiting" automatisch geactiveerd.

Opmerking

Er kan slechts één actiecode worden geactiveerd en er kan er ook slechts één de status "Waiting" hebben.


Betalingsdetails

Op het tabblad Betalingsdetails kunt u de geschiedenis van uw abonnement en betalingen bekijken.

Onderdeel	Beschrijving
Betalingsdatum	Toont de datum van betaling.
Product	Toont het aangeschafte plan of de aangeschafte app.
Type betaling	Toont het type betaling: - state-qualifier="leveraged-tm">Abonnement. - Eenmalige betaling
Duur	Toont de abonnementsperiode.
Details	Toont de gedetailleerde betalingsinformatie.
Betalingshoeveelheid	Toont het bedrag voor een abonnement of een eenmalige aankoop.
Status	- Payment Completed: De betaling is verwerkt. - Payment Failed: De betaling is niet verwerkt. - Payment Incomplete: De betaling is niet voltooid. Klik op “Nu betalen” om verder te gaan. - In afwachting: De betaling voor een abonnementsverlenging is in behandeling.

Factuurdetails bekijken

U kunt uw facturen en betalingsbewijzen bekijken door op de knop Ontvangstbewijzen aan de rechterkant te klikken.

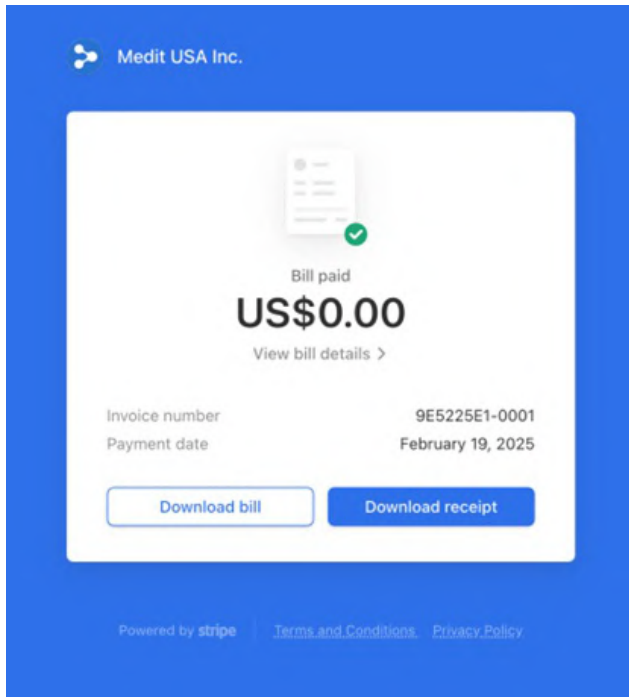

Klik op “Factuurdetails bekijken” voor de betalingsdetails.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Mijn account

In My Info kunt u de informatie die u tijdens de registratie hebt verstrekt bekijken en bewerken, en uw lidmaatschapsstatus controleren.

← → ↻ 🔍 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner



Account Information

Email Address

[Change Email Address](#)

Password

[Change Password](#)

Name

Language

Country/Region

 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Mijn praktijk/Mijn lab (Alleen beheerdersaccount)

U kunt de informatie over uw praktijk of laboratorium bekijken en wijzigen. Dit gedeelte is alleen beschikbaar voor beheerdersaccounts.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

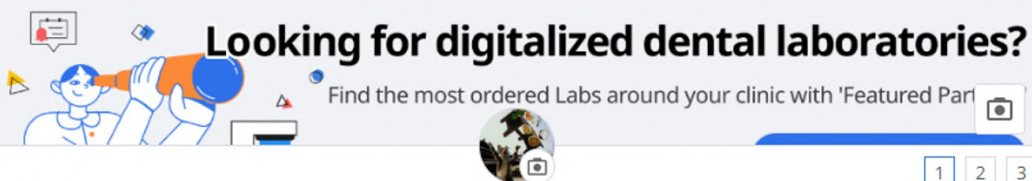

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Mijn scanner

U kunt de informatie over het aangesloten apparaat voor het account controleren.

Onderdeel	Beschrijving
Type	Toont de naam van het model.
Serienummer	Toont het serienummer van het apparaat.
Gebruikstijd	Geeft aan hoe lang het apparaat al wordt gebruikt.
Status	Toont de registratiestatus van het apparaat: • 'Geregistreerd' geeft aan dat de scanner met succes is aangesloten en geregistreerd. • 'Niet geregistreerd' geeft aan dat de scanner niet langer geregistreerd is. Als de scanner bij een andere groep geregistreerd wordt, verliest hij zijn registratie in de huidige groep.
Laatst verbonden	Toont de datum van de laatste verbinding.
Laatst gekalibreerd	Toont de datum van de laatste kalibratie.
Startdatum garantie	Toont de datum waarop de garantie werd geactiveerd.
Vervaldatum garantie	Toont de datum waarop de garantie verloopt.
Resterende dagen	Toont het aantal resterende dagen voordat de garantie verloopt.
Bestellen	Hiermee kan de gebruiker de garantie aanschaffen en verlengen.
Wissen-pictogram	Hiermee kan de gebruiker de scanner uit de lijst verwijderen.

Ander menu

Mededeling en update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Gerelateerde websites

Ontvang allerlei informatie over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals Medit Academy, Medit Academy YouTube en Medit Hulpcentrum.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Download Medit Link App

U kunt de laatste versie van het installatieprogramma vanaf het web downloaden. Dit menu is nuttig wanneer u het installatieprogramma uit het productpakket kwijt bent, of wanneer u een verouderd installatieprogramma hebt.

Opmerking

Medit Link wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een internetverbinding heeft.



Windows

macOS

Overzicht

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Titelbalk	Raadpleeg de Medit Link App > Titelbalk voor gedetailleerde informatie.
2	Menu	Raadpleeg Medit Link App > Menu voor gedetailleerde informatie.
3	Instrumenten en functies	Raadpleeg Medit Link App > Bestandenbekijker en Medit Link App > Weergaveopties voor gedetailleerde informatie.
4	Dossierlijst	Raadpleeg Medit Link App > Filteren en zoeken voor gedetailleerde informatie.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare menu's in elk type praktijk en laboratorium account.

Type account		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Clinic Accounts	Beheerder	O	O	O	X	X	O	O	O
	Lid	O	O	O	X	X	O	O * Alleen herstelfunctie	O
Lab Accounts	Beheerder	X	X	X	O	O	O	O	O
	Lid	X	X	X	O	O	O	O * Alleen herstelfunctie	O

Titelbalk

De titelbalk biedt snelle toegang tot functies zoals accountinformatie, meldingen, mededelingen en updates, instellingen en netwerkstatus.



Mijn informatie

Mijn informatie bevat basisinformatie over de gebruiker zoals profielafbeelding, praktijk- of labnaam, e-mailadres en gebruikersnaam.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Meldingen

Bekijk meldingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden, bestellingen en werkprocessen.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


- | | |
|---|---|
| 1 | Vink het vakje aan om alleen de ongelezen berichten te tonen. |
| 2 | Klik op een melding om onmiddellijk naar het betreffende dossier of de betreffende webpagina te gaan. |

Mededeling & update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Instellingen

In het dialoogvenster "Instellingen" kunnen gebruikers het programma configureren.

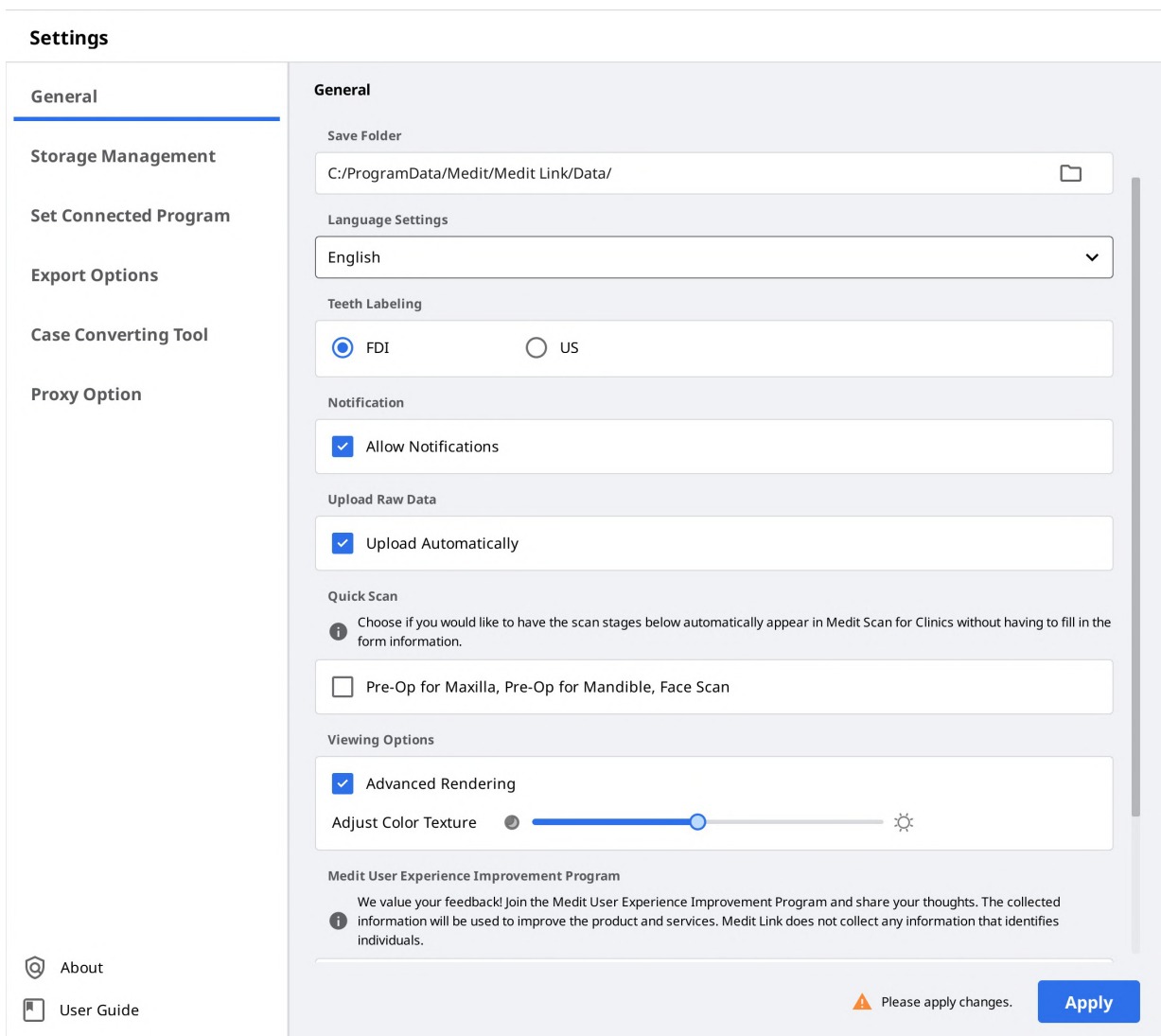

Raadpleeg de [Medit Link App > Instellingen](#) voor gedetailleerde informatie over de instellingsopties.

Netzwerkstatus

Met Medit Link kunt u alle functies probleemloos gebruiken wanneer u verbonden bent met een netwerk.

Om u te helpen de status van uw netwerkverbinding in realtime te controleren, wordt in de titelbalk het pictogram voor de netwerkstatus weergegeven.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Als de netwerkverbinding niet goed is, kunt u de volgende beperkingen ondervinden:

- Sommige functies zullen beperkt zijn, zoals het bestellen van een dossier, het aanmaken van een dossier, delen via Case Talk en cloudsynchronisatie.
- De algemene prestaties van de dienst kunnen afnemen door de impact van de netwerkomgeving.

In dit geval kunt u overschakelen naar de offline modus om basistaken uit te voeren en vervolgens de functies gebruiken die internet vereisen zodra u weer verbinding heeft.

Opmerking

Het netwerksymbool geeft de reactiesnelheid aan tussen het huidige gebied en AWS (Amazon Web Service). Het geeft niet de snelheid van uw netwerkverbinding weer, dus soms kan het de status als slecht of zwak weergeven, zelfs als uw netwerksnelheid snel genoeg is.

Als het andere proces hetzelfde netwerk gebruikt, kan de snelheid laag of slecht worden weergegeven en kunnen de algemene prestaties van Medit Link slecht zijn. In dit geval wordt aangeraden dat u het netwerk niet met andere processen deelt.

De functie "Ruwe gegevens uploaden" neemt bijvoorbeeld een groot deel van het netwerkproces in beslag. Als het symbool een matige of slechte status aangeeft, ga dan naar Instellingen > Ruwe gegevens uploaden en schakel "Automatisch uploaden" uit.

Instellingen

Algemeen

Biedt opties voor de algemene systeemopstelling.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Opslagmap	Geef een map op om de gegevensresultaten op te slaan die door Medit Link en verbonden programma's worden gegenereerd.	
Apps installatiemap	Geef een installatiepad op voor Medit Apps en partner apps die beschikbaar zijn in de App Box.	
Taalinstellingen	Kies de taal voor het programma.	
Tanden labels	Selecteer een etiketteringssysteem voor tanden tussen FDI en VS.	
Meldingen	Indien aangevinkt, ontvangt u meldingen voor programma-updates.	
Ruwe gegevens uploaden	Als deze optie is aangevinkt, worden de ruwe gegevens automatisch naar de cloud geüpload. Dit helpt bij het maken van een back-up van de originele gegevens, zodat u naadloos kunt scannen wanneer u Medit Link gebruikt met hetzelfde account op een andere computer. Het maken van een back-up van de originele gegevens in de cloud is alleen van toepassing op gegevens die zijn verkregen met Medit Scan for Clinics.	
Snelle scan	Kies of u wilt dat de onderstaande scanfasen automatisch verschijnen in Medit Scan for Clinics, zonder dat u de formulierinformatie hoeft in te vullen. • Pre-operatie voor bovenkaak • Pre-operatie voor onderkaak • Gezichtsscan	
Weergaveopties	Geavanceerde rendering	Indien deze optie is aangevinkt, wordt het 3D-model levendiger en realistischer weergegeven.
	Kleurstructuur aanpassen	Pas de helderheid van het 3D-model aan. *De resulterende kleuren kunnen enigszins afwijken van die in Medit Link wanneer u dezelfde gegevens opent met andere software.
Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma	Neem deel aan het Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma. • Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze producten en diensten te verbeteren. • We verzamelen geen informatie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd.	
Standaardpagina na inloggen	Selecteer het standaardmenu dat bij het starten van het programma moet worden weergegeven. • Clinic accounts kunnen kiezen tussen Patient en Case Box • Lab accounts kunnen kiezen tussen In Box en Work Box	

Opslagbeheer

Controleer en beheer de lokale en cloudopslagruimte.

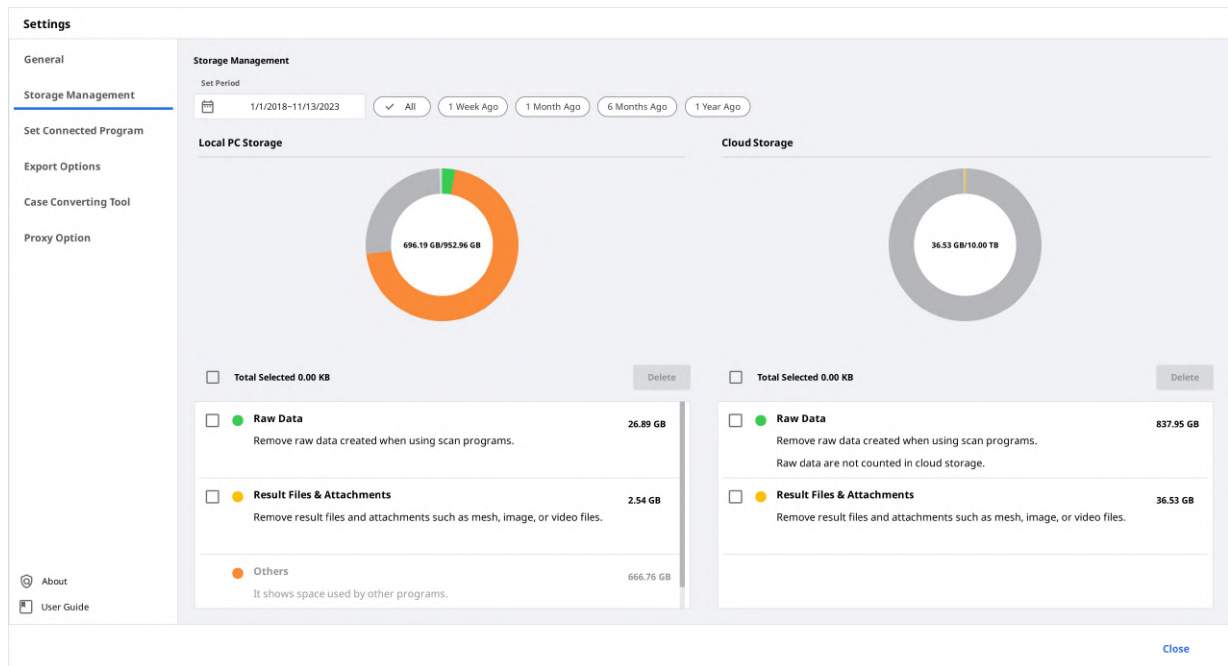

Periode instellen

Stel de specifieke periode in voor het verwijderen van gegevens die zijn aangemaakt binnen het tijdsbestek hieronder.

- Alle: Bekijk alle bestanden.
- 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt.
- 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt.
- 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt.
- 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.

Lokale opslag

Beheer de opslagruimte van de computer.

Ruwe gegevens	Verwijder de geselecteerde ruwe gegevens van uw computer. Als de ruwe gegevens al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.
Resultaat en bijlage	Verwijder de resultaat- en bijlagebestanden van de pc, zoals mesh, afbeeldingen en video's. Als deze bestanden al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.
Anderen	Bekijk de bestanden die worden gebruikt om het systeem en andere programma's te bedienen. Het toont de opslag van uw computer. U kunt deze bestanden niet in Medit Link wissen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden van de computer.

Cloudopslag

Beheer de cloudopslagruimte.

Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslagruimte in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. Indien nodig kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren, bijvoorbeeld door ze te verwijderen om de privacy van de patiënt te beschermen.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloudopslag. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Koop opslag	Als u een 2 GB Plan heeft, overweeg dan om over te stappen op het 10 TB Plan voor meer cloudopslag.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om opslagruimte vrij te maken.

Stel verbonden programma in

Beheer de programma's die integratie in Medit Link ondersteunen.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

U kunt de volgende programma's verbinden:

	Clinic Account	Lab Account
Scanprogramma	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Opmerking

De volgende diensten kunnen niet worden geïntegreerd in Medit Link voor Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Export opties

Stel in hoe bestanden uit Medit Link moeten worden geëxporteerd.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Type	Kies het CAD-programma dat u wilt gebruiken voor het ontwerpen. Het programma past de resultaten automatisch aan op basis van uw keuze, waardoor u zonder extra asuitlijning verder kunt gaan met het ontwerp.
Exporteer bestanden naar	Geef het pad op waar u de resultaten wilt opslaan.
Meshformaat	Specificeer het formaat van het afgewerkte mesh-bestand.
Afbeeldingsformaat	Geef het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Comprimeren en samenvoegen	Bestanden comprimeren: Comprimeer alle resultaten tot één bestand. Combineer individuele mesh: Combineer alle resultaten voor de bovenkaak of onderkaak in één bestand. Wanneer u bepaalde programma's gebruikt die niet in staat zijn om meerdere bestanden te importeren en te verwerken, kunt u deze bestanden samenvoegen tot één bestand, zodat u ermee kunt werken in die programma's.
Opties wanneer dezelfde map of hetzelfde bestand al bestaat.	Kies de standaardactie voor dossiers waarin dezelfde map of bestandsnaam bestaat in het doelpad. • Altijd vragen bij exporteren. • Exporteer een nieuw bestand en overschrijf de bestaande bestanden. Het huidige opgeslagen bestand gaat verloren. • Maak een map aan en exporteer de bestanden
Regel voor mapnaam	Stel regels op voor het benoemen van mappen bij het exporteren van bestanden. De regels die u instelt, worden toegepast op de mapnaam en het geëxporteerde bestand wordt opgeslagen in de aangemaakte map. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID
Regel voor bestandsnaam	Stel regels in voor de naam van het geëxporteerde bestand. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID

Omzetinstrument voor dossiers


U kunt dossiers tussen verschillende accounts verplaatsen door bestaande dossiers van het account te exporteren of door dossiers te importeren die zijn geëxporteerd vanuit andere accounts.

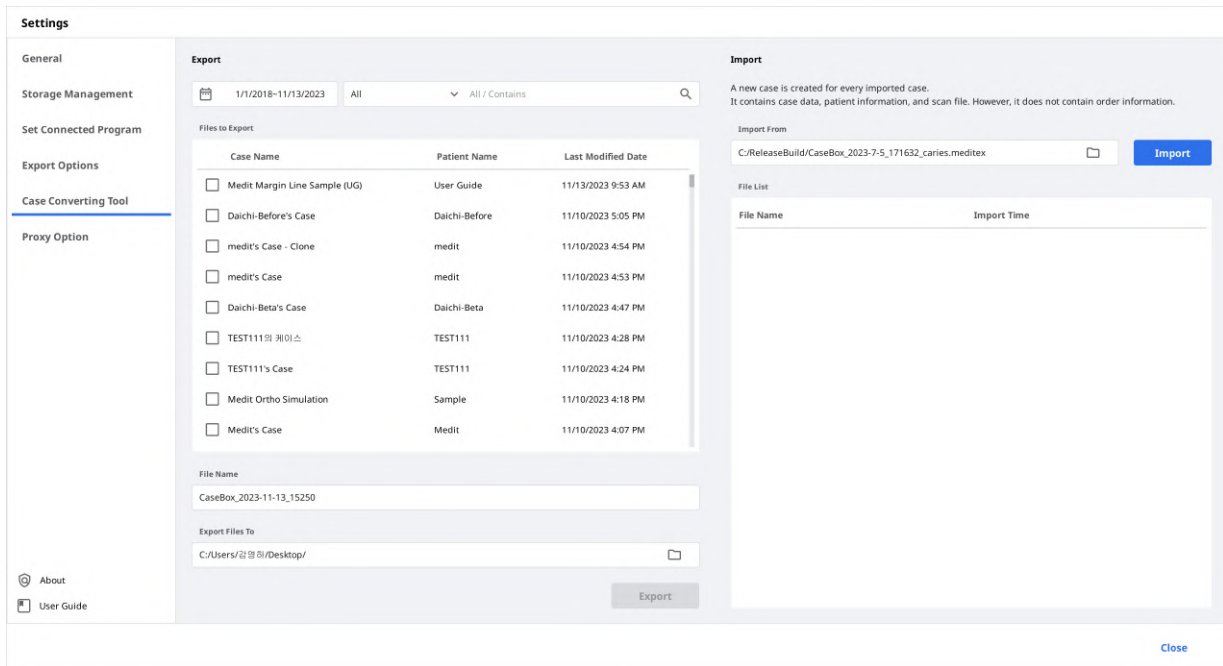


Dossier exporteren

Exporteer dossiers vanuit het huidige ingelogde account naar de lokale pc.

1. Open Medit Link en klik op het pictogram "Instellingen".

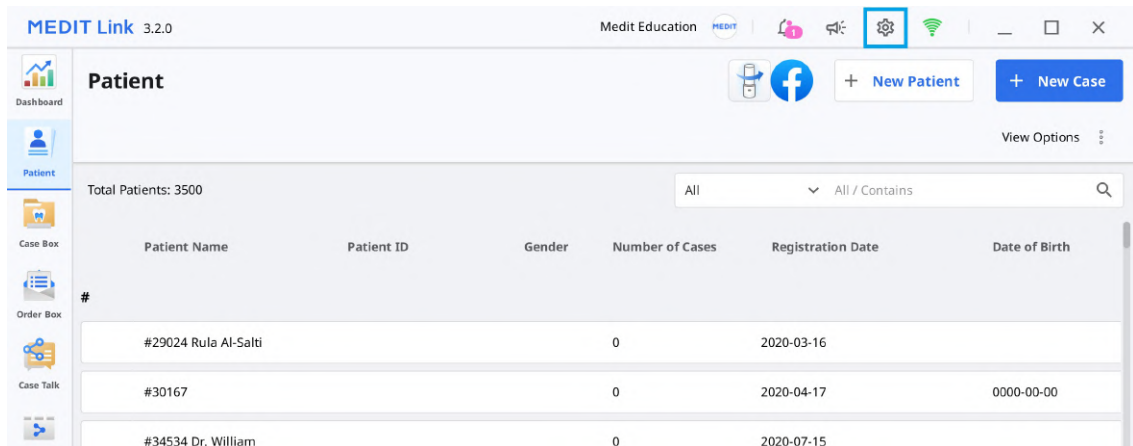

2. Kies in het linkermenu "Omzetinstrument voor dossiers".

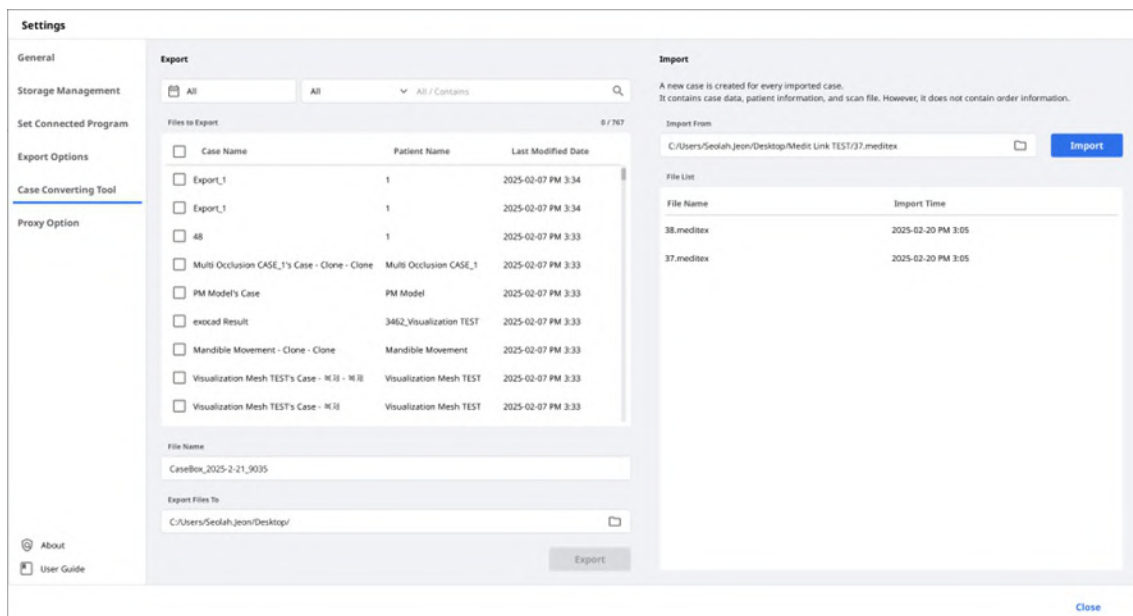

3. Stel in het gedeelte "Exporteren" een periode in of zoek indien nodig naar te exporteren dossiers.

4. Kies de dossiers die u wilt exporteren uit de lijst in het gedeelte "Te exporteren bestanden".

5. Stel de bestandsnaam in door de dossiernam in het veld "Bestandsnaam" te wijzigen.
6. Stel de bestemmingsmap in om de geselecteerde dossiers te exporteren.
7. Klik op "Exporteren".
8. Klik op "Ja" om de map waarin het bestand wordt geëxporteerd te openen.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. De geëxporteerde dossiers worden opgeslagen in het bestandsformaat .meditex.

Dossier importeren

1. Open Medit Link en klik op het pictogram "Instellingen".

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

- Kies in het linkermenu "Omzetinstrument voor dossiers".

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

All / Contains

Files to Export 0 / 767

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ 48	1	2025-02-07 PM 3:33
☐ Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion CASE_1	2025-02-07 PM 3:33
☐ PM Model's Case	PM Model	2025-02-07 PM 3:33
☐ exocad Result	3462_Visualization TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Mandible Movement - Clone - Clone	Mandible Movement	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33

File Name

CaseBox_2025-2-21_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
38.meditex	2025-02-20 PM 3:05
37.meditex	2025-02-20 PM 3:05

Close

- Klik in het gedeelte "Importeren" op het mappictogram om op uw computer te zoeken naar het .meditex-bestand dat u wilt importeren.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

- Klik op de knop "Importeren" en vink de te importeren bestanden in de onderstaande lijst aan.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Het geïmporteerde dossier verschijnt ook in uw Case Box (Clinic-account) of Work Box (Lab-account).

Proxy-opties

In sommige beperkte netwerkomgevingen kunt u de netwerkinstellingen wijzigen.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Over

Toon gedetailleerde informatie over Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Gebruikershandleiding


Ontvang de gebruikershandleiding voor Medit Link.

Voor het openen van de gebruikershandleiding is een internetverbinding nodig.

Menu

Dashboard

U kunt de statistieken van alle werkzaamheden op Medit Link bekijken in de vorm van grafieken en overzichten, zowel in de Medit Link App als op het web.

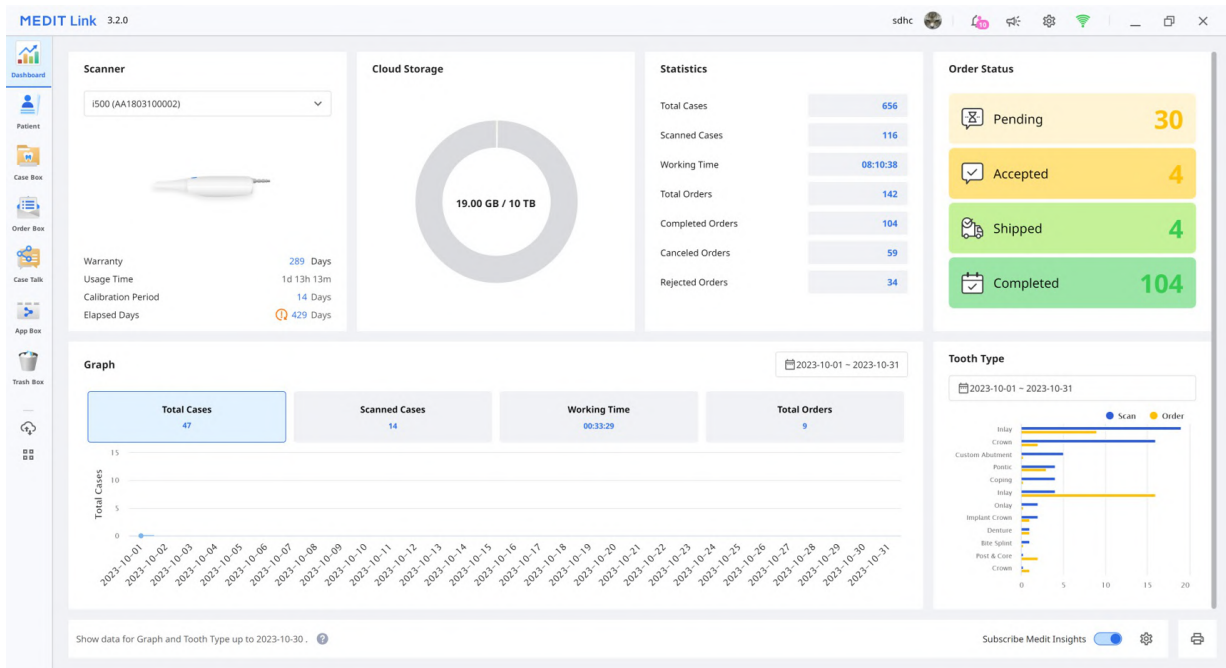

Opmerking

Raadpleeg het [Medit Link Web > Dashboard](#) voor meer informatie over het dashboard en Medit Insights.

Patient

In het menu Patient kunt u patiënten toevoegen, bewerken, verwijderen of samenvoegen.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggsfgsdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Nieuwe patiënt toevoegen

1. Klik op "Nieuwe patiënt".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

[Cancel](#) [Save](#)


2. Vul de vereiste informatie in het dialoogvenster Nieuwe patiënt in en klik op "Opslaan".

Patiënt wissen

Opmerking

U kunt een patiënt alleen wissen als er geen dossiers voor de patiënt zijn.

1. Selecteer de patiënt die u uit de lijst wilt wissen.

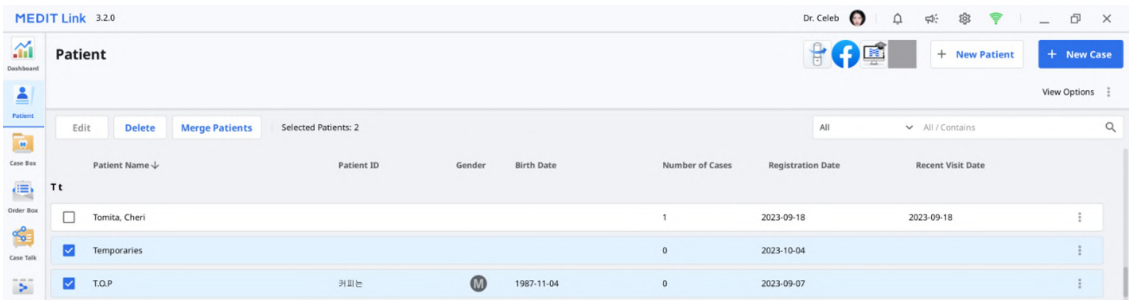


2. Klik op "Wissen".

Patiënten samenvoegen

U kunt alle dossiers van meerdere patiënten samenvoegen tot één patiënt.

1. Selecteer de patiënten die u wilt samenvoegen uit de lijst.

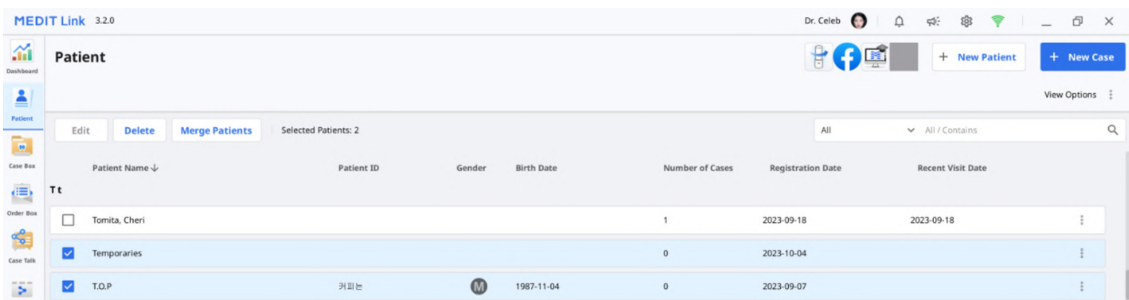

2. Klik op "Patiënten samenvoegen".
3. Selecteer de doelpatiënt waarvoor u alle dossiers wilt samenvoegen.
4. Alle dossiers worden samengevoegd tot één doelpatiënt en de patiëntinformatie van de doelpatiënt wordt behouden.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

CancelApply

5. Klik op "Toepassen" om door te gaan met het samenvoegen.

Case Box/Work Box

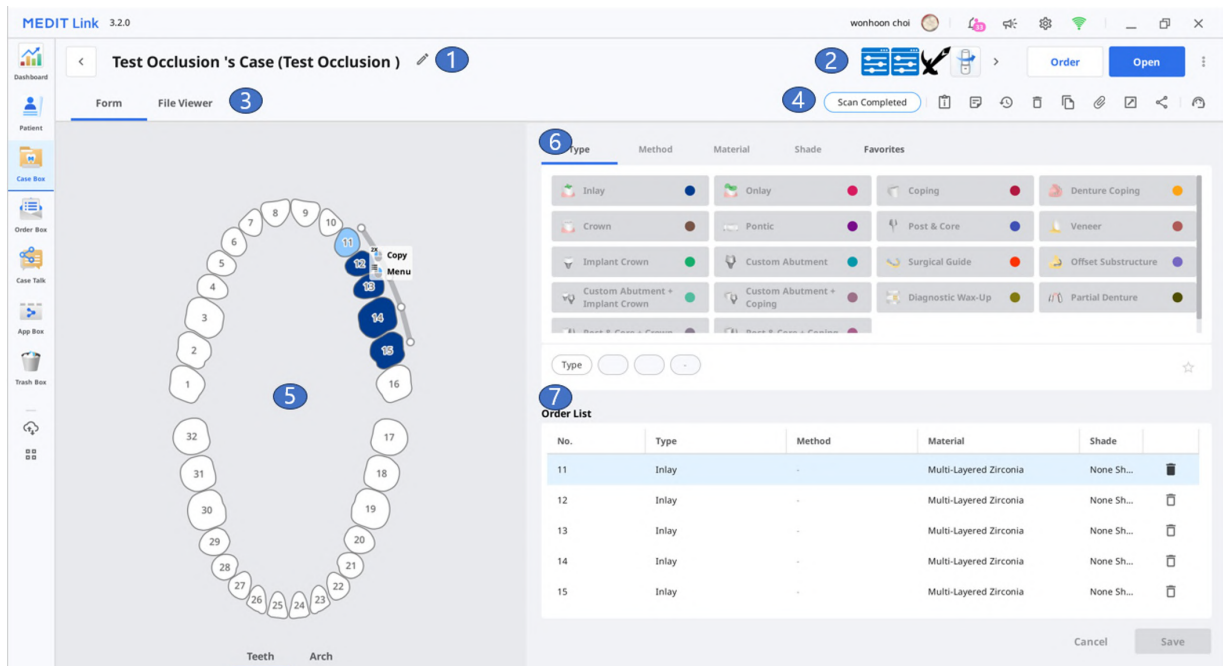

1	Toon de dossiernamen en de patiëntnamen.
2	Biedt de belangrijkste beschikbare functies: Scan- of openknop, bestelknop, app-pictogrammen.
3	Toon beschikbare tabbladen: Formulier, Bestandenbekijker.
4	Toon functies voor het beheren van dossiers en bestanden.
5	Toon de gebruikersinterface voor de formulierregistratie voor het geselecteerde scanprogramma.
6	Geef de gebruikers informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die beschikbaar zijn voor het geselecteerde tandnummer, zodat ze een keuze kunnen maken.
7	Toon informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die zijn toegepast op de geselecteerde tanden.

Tabbladen in Case Box/Work Box

Formulier	Bestandenbekijker
Het tabblad Formulier bevat een gebruikersinterface waarop basisinformatie voor het scannen kan worden ingevoerd, zoals het type, de methode en het materiaal voor de tandnummers, evenals de scanopties. De informatie die u invoert, wordt doorgegeven aan het verbonden scanprogramma en gebruikt als orderinformatie wanneer u een order plaatst bij uw partner.	Bekijk resultaatbestanden die door scanprogramma's en CAD zijn gegenereerd. De Bestandsweergave toont en beheert de verkregen of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Functies in Case Box/Work Box

De volgende functies zijn beschikbaar in Case Box/Work Box.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.
	Ga naar Order Box/In Box	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.
	Dossiergeschiedenis	Biedt gedetailleerde informatie over de dossiergeschiedenis. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Wissen	Wis het dossier. U kunt bestelde dossiers of offline aangemaakte dossiers niet wissen.
	Kopieer	Maak een kopie van het huidige dossier in Case Box. Alle gegevens worden gekopieerd naar het gekloonde dossier. Deze functie is handig bij het kopiëren van behandelingsinformatie voor dezelfde patiënt of bij het maken van een extra order met dezelfde informatie of bestanden.
	Bijvoegen	Voeg bestanden bij in verschillende formaten.
	Exporteren	Exporteer scan- of CAD-resultaatbestanden naar de lokale pc. Bij het exporteren van bestanden heeft u de mogelijkheid om het gewenste bestandsformaat te kiezen. De geëxporteerde bestanden kunnen worden geïmporteerd in CAD- en CAM-software voor verdere bewerking.
	Delen	Maak een link aan om te delen. Gebruikers die de gedeelde link hebben, hebben toegang tot de 3D-gegevens in een webbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari, zonder dat er extra programma's geïnstalleerd hoeven te worden. U kunt de link met iedereen of alleen met specifieke personen delen. Er kan een pincode of een vervaldatum voor links worden ingesteld om privégegevens te beveiligen.
	Verstuur ondersteuningsverzoek	Ga naar het Medit Hulpcentrum om het ondersteuningsverzoek in te dienen.

Order Box/In Box

MEDIT Link 3.2.0

Header: Occlusion Test's Case (Occlusion Test) 1 Cancel Order 2 Pending 4

Order 3

Order ID: 5996137 5

Patient Name: Occlusion Test 5 Partner Name: WonhoonChoi_Lab_Stage

Scan Date: 2023-04-20 오후 2:08 Order Date: 2023-04-27 오후 2:08

Requested Delivery Date: 2023-04-27 Expected Delivery Date: 2023-04-27

Memo

Tags

Order List Shipment

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Toon de dossiernamen en de patiëntnamen.
2	Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen).
3	Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbekijker.
4	Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie en tags, etc.
5	Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum, en de notitie en tags.
6	Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus.

Tabbladen in Order Box/In Box

Order	Bestandenbekijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals ordernummer, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De Bestandsweergave toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.

De gebruiker kan via Case Talk in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

Opmerking

Case Talk vereist een internetverbinding.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Gedeelde dossiers kunnen worden bekeken via een webbrowser zonder dat er een apart programma geïnstalleerd hoeft te worden. Dit maakt eenvoudige communicatie over 3D-gegevens op verschillende apparaten mogelijk.

App Box

App Box biedt diverse add-in programma's die uw basisscanworkflow verrijken en de productiviteit verhogen. U kunt de aangeboden apps downloaden en installeren om tandheelkundige producten te maken, scangegevens te analyseren, u te helpen tijdens een consult, of uw werkproces te optimaliseren.

Alle


Het tabblad "Alle" toont een lijst met alle beschikbare apps, inclusief apps ontwikkeld door Medit (Medit Apps) en partner apps. Deze partner apps zijn integraties met verschillende sectoren van de digitale tandheelkunde, zoals 3D-printen, CAD/CAM-software, etc.

Medit Apps

Het tabblad "Medit Apps" toont alleen de lijst met door Medit ontwikkelde apps.

Gedownload

Het tabblad "Gedownload" toont een lijst van momenteel geïnstalleerde apps op uw pc, evenals apps die in het verleden zijn gedownload met het gebruikersaccount.

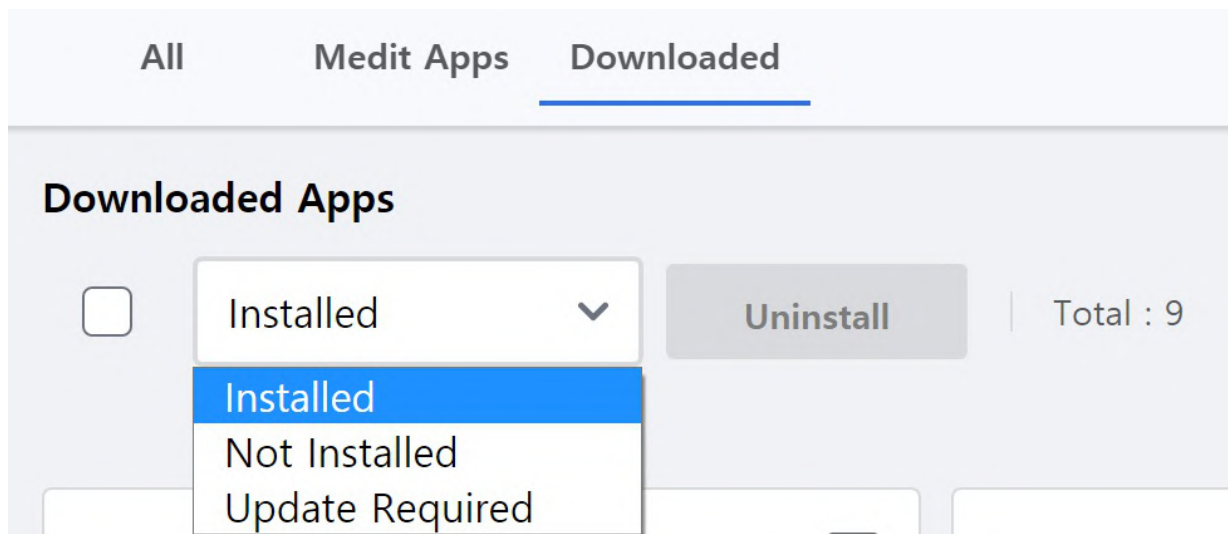

- **Geïnstalleerd:** Deze optie toont alleen apps die geïnstalleerd zijn op de pc waarop de gebruiker momenteel is aangemeld.
- **Niet geïnstalleerd:** Met deze optie kunt u apps zien die u op andere pc's heeft geïnstalleerd, zodat u ze snel kunt installeren.
- **Update vereist:** Deze optie toont alleen apps die op de huidige pc geïnstalleerd zijn en bijgewerkt moeten worden.

Trash Box

In de Trash Box worden de verwijderde dossiers tijdelijk bewaard. Elk dossier in de Trash Box kan worden hersteld of definitief worden verwijderd.

Let op

De uit de Trash Box verwijderde gegevens worden permanent van uw computer en de server verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

Restore

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Dossier synchronisatiebeheerder

Met de Dossiersynchronisatiebeheerder kunt u dossiers efficiënt uploaden en downloaden. U kunt meerdere dossiers naar de cloud uploaden of op uw lokale computer downloaden. Om te zien welke dossiers gesynchroniseerd moeten worden, kunt u er gewoon naar zoeken of datumfilters toepassen.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

Total Cases: 210
 ☒ No Date
 Data Type

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Uploaden

 Upload	Upload de geselecteerde dossiers.
 Cancel	Annuleer het uploaden van de geselecteerde dossiers.
 Retry	Uploaden van dossiers opnieuw proberen als het uploaden mislukt.

Downloaden

 Download	Download de geselecteerde dossiers.
 Cancel	Annuleer het downloaden van de geselecteerde dossiers.
 Retry	Downloaden van dossiers opnieuw proberen als het downloaden mislukt.

Gerelateerde websites

U kunt direct naar menu's gaan die alleen beschikbaar zijn op Medit Link Web, zoals My Info, Partners en Membership. Raadpleeg Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) en [My Info](#) voor een gedetailleerde beschrijving van de Medit Link Web-menu's.

U heeft toegang tot de webwinkel van Medit, Medit Shop, waar u verlengde garanties voor scanners en andere Medit-producten, zoals rugzakken voor scanners, kunt aanschaffen.

U kunt ook allerlei informatie krijgen over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals het Medit Hulpcentrum, het YouTube-kanaal van Medit Academy en het online leerplatform Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Bestandenbekijker

De bestandenbekijker groepeerd en toont verschillende gegevens, waaronder de gegevens van programma's die met Medit Link zijn verbonden en gegevens die door gebruikers zijn toegevoegd.



Het biedt standaard beheerfuncties zoals het tonen/verbergen van gegevens, het aanpassen van de ondoorzichtigheid en het wissen van gegevens.

Het ondersteunt voorbeelden van bestanden in de volgende formaten:

- 3D-gegevens: STL, OBJ, PLY
- 2D-afbeeldingen: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videobestanden: MKV, MP4, AVI, WMV

Gegevensboom

U kunt alle gegevens voor het dossier groeperen en weergeven in de gegevensboom. U kunt ook gegevens tonen/verbergen, de transparantie aanpassen en gegevens uit de gegevensboom wissen.

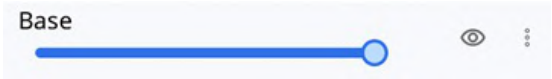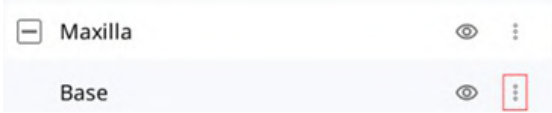
	Toon/Verberg	U kunt de gegevens tonen of verbergen.
	Ondoorzichtigheid	De schuifbalk verschijnt wanneer u op een van de gegevens in de gegevensboom klikt. U kunt de ondoorzichtigheid van de getoonde gegevens aanpassen door de schuifbalk te verplaatsen. 
	Meer	Als u op het pictogram "Meer" klikt, verschijnen er extra functies.  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens en toon alleen de overeenkomstige gegevens. • Verbergen: Verberg de gegevens. • Kopiëren: Kopieer de gegevens en voeg ze toe aan de bijlagengroep. • Exporteren: Exporteer de geselecteerde bestanden. • Hernoemen: Verander de naam van de gegevens. • Wissen: Wis de gegevens.



Opmerking

U kunt gegevens alleen online hernoemen.

Instrumenten voor modelcontrole

3D-model beheren

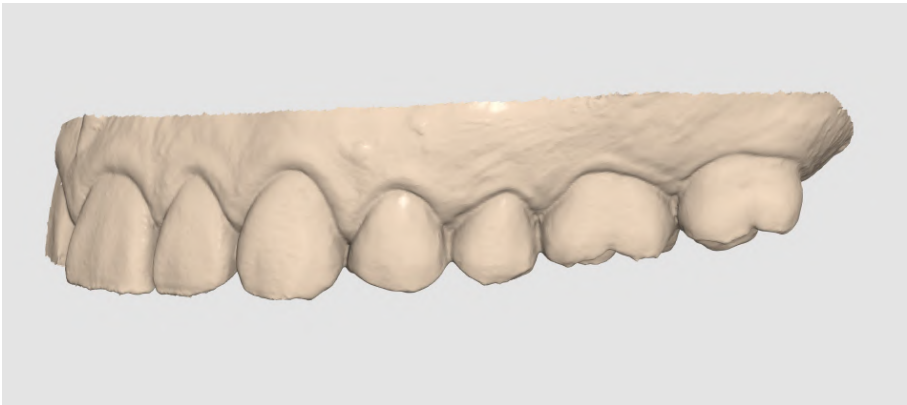+	Verplaatsen	Verplaats het model.
↻	Roteren	Roteer het model.
🔍	In-/uitzoomen	Zoom in en uit op het model.
🔍	Zoom aanpassen	Plaats model in het midden van het scherm.
🌈	Gegevens weergave modus	Bekijk de gegevens in kleur met een glanzende afwerking(PBR-weergave). 
🌈		Bekijk de gegevens in kleur met een matte afwerking (Phong-weergave). 
●		Bekijk de gegevens in één kleur. 

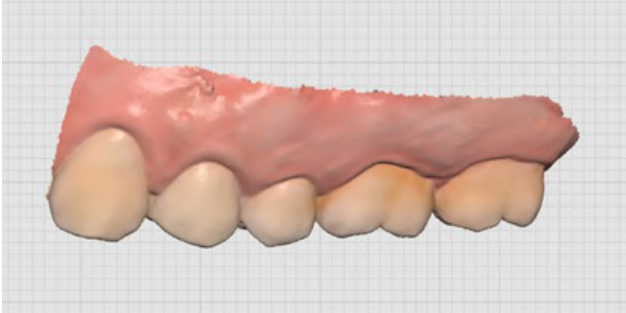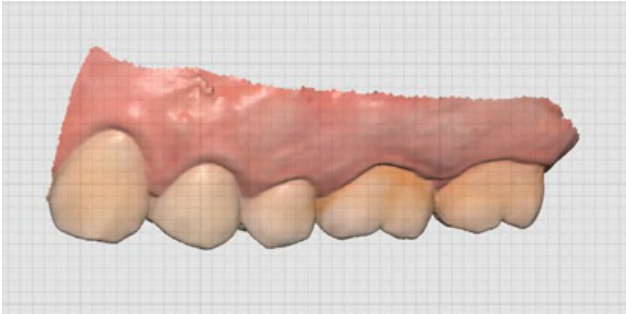	Ras teri nst elli nge n (m m)	Raster aan	Toon het raster op de achtergrond. 
		Raster uit	Verberg het raster op de achtergrond.
		Overlay aan	Plaats het raster over het model. 

2D-afbeeldingen beheren


 	Volgende/vorige afbeelding	Beweeg tussen afbeeldingen.
	Bewerken	Bewerk de afbeelding.
 	Venster losmaken/aanpassen	Maak het afbeeldingsvenster los en verplaats het naar de gewenste positie. Wijzig het formaat van het venster. Wanneer het venster op zijn oorspronkelijke plaats wordt teruggezet, krijgt het zijn standaardgrootte terug.

Functie-instrumenten

Beeldopname en notitie


Leg het huidige scherm vast als een 2D-afbeelding. U kunt erop tekenen of notities toevoegen.

U kunt het als bestand met uw notities opslaan en als referentie opsturen.

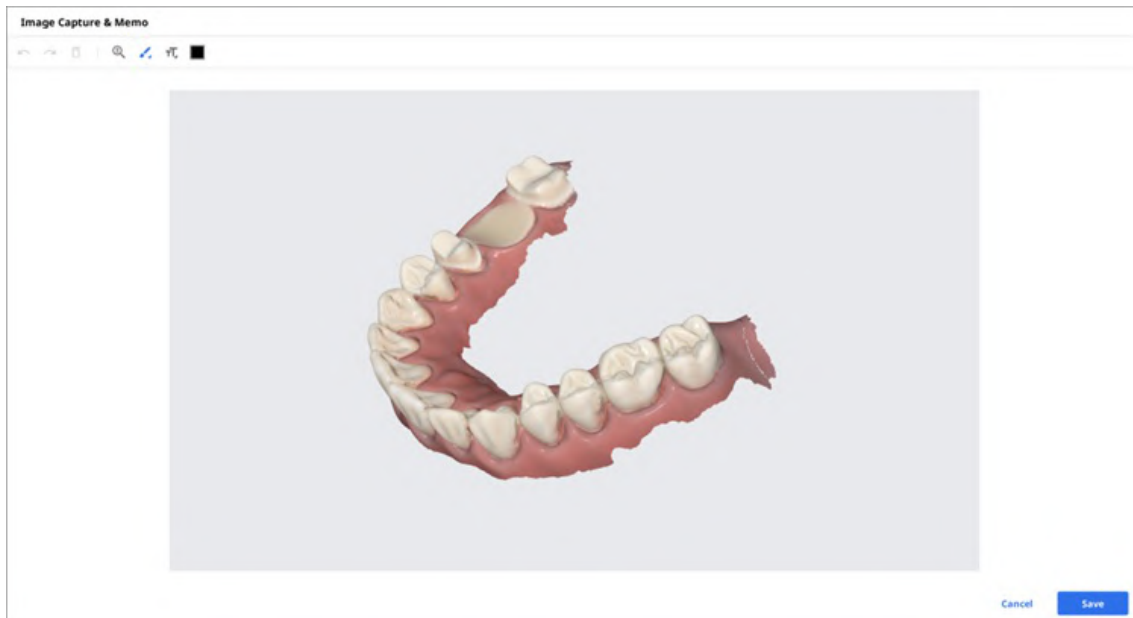

Ortho-opname

Leg de beelden vast in de huidige weergaverichting, evenals boven/onder/links/rechts vanuit de huidige weergaverichting.

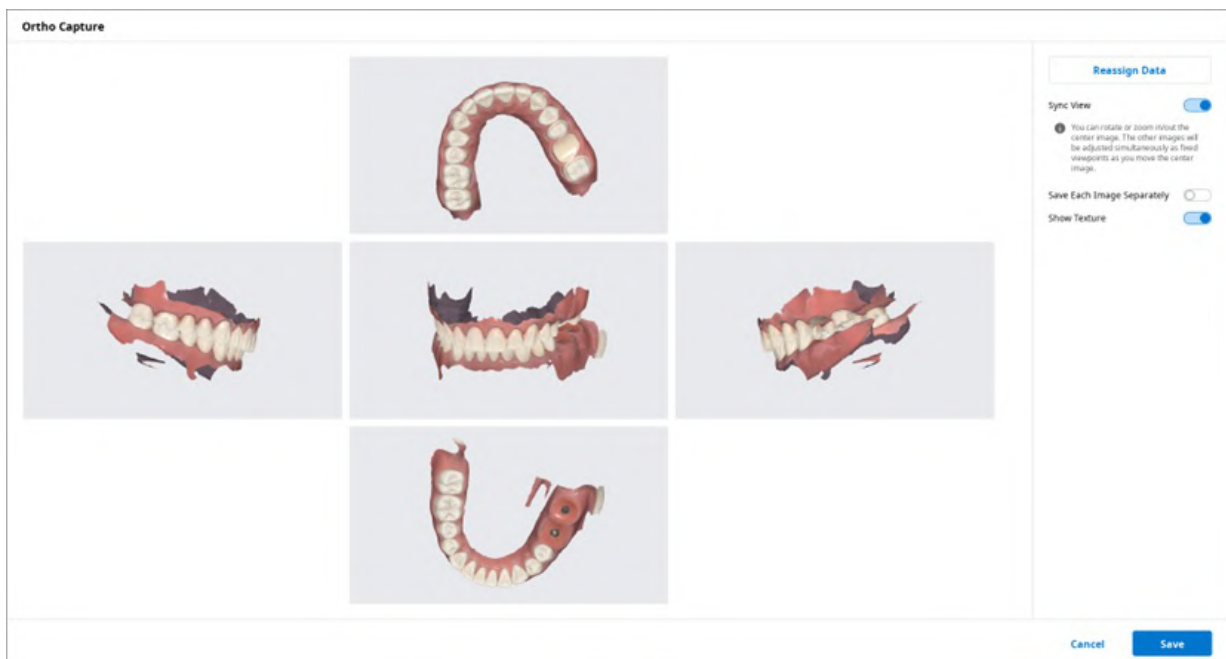

Sync-weergave	Indien ingeschakeld, kunt u de middelste afbeelding roteren, of erop in- en uitzoomen. De andere afbeeldingen worden tegelijkertijd aangepast als vaste weergaverichtingen terwijl u de middelste afbeelding verplaatst. Indien uitgeschakeld, kunt u alle afbeeldingen afzonderlijk verplaatsen, roteren of erop in- en uitzoomen.
Elke afbeelding apart opslaan	Sla elke afbeelding op in hoge resolutie.
Structuur tonen	Schakel de structuur van het model in of uit.
Gegevens opnieuw toewijzen	Wijzig de gegevens voor de bovenkaak/onderkaak met de functie "Gegevens opnieuw toewijzen". U kunt de gewijzigde gegevens gebruiken om de resultaat afbeeldingen van Ortho-opname te maken en te gebruiken. • Scangegevens: Alle scangegevens van het dossier worden weergegeven. • Bovenkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de bovenkaak worden weergegeven. • Onderkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de onderkaak worden weergegeven.


Gaten vullen

Vul gaten in 3D-meshgegevens.



Bijknippen


Bijknippen biedt verschillende instrumenten om gegevens te bewerken.

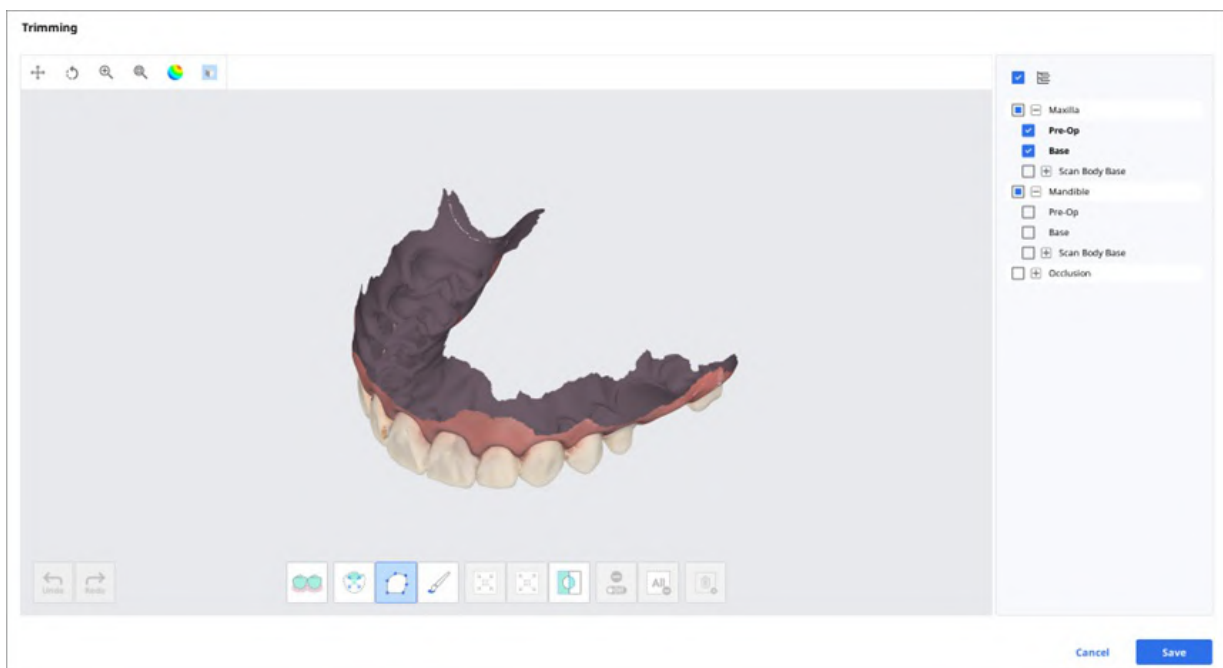

De geselecteerde 3D-meshgegevens kunnen met verschillende instrumenten onderin het venster worden bewerkt.

Selectie		Slimme tandenselectie	Selecteer automatisch alle tanden van de boog, zonder het tandvlees.  Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar voor de scangegevens die zijn verkregen door Medit Scan for Clinics met de optie "GPU gebruiken" ingeschakeld.
		Slimme enkele tandselectie	Selecteer het gebied van een enkele tand automatisch met één klik. U kunt op de tand klikken of slepen.
		Polylijnselectie	Selecteer alle objecten binnen de getekende polylijnvorm op het scherm.
		Kwastselectie	Selecteer alle objecten op een uit de vrije hand getekend pad op het scherm. Alleen de voorkant wordt geselecteerd. De kwast is beschikbaar in drie verschillende maten.
Aanpassing van geselecteerd gebied		Verklein het geselecteerde gebied	Verklein het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Vergroot het geselecteerde gebied	Vergroot het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Keer het geselecteerde gebied om	Selectie omkeren.
Deselectie		Selectie/Deselectie	Indien ingeschakeld, kunt u met behulp van verschillende instrumenten het geselecteerde gebied deselecteren.
		Wis alle selecties	Wis alle geselecteerde gebieden.
		Geselecteerd gebied wissen	Wis de gegevens uit het geselecteerde gebied.

1. Selecteer het gebied dat u wilt bijknippen met de instrumenten voor gebiedsselectie.

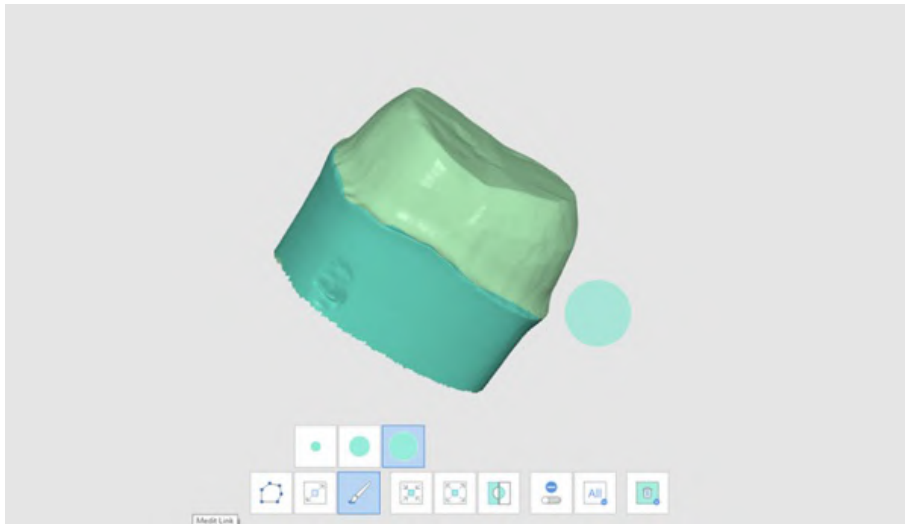


Opmerking


Het polylijn bijknippen instrument selecteert alle onderdelen binnen een polylijnvorm die op het scherm getekend is, terwijl het kwast bijknippen instrument alleen gezichtsgegevens aan de voorkant selecteert.

2. Met de volgende drie instrumenten kunt u de selectie omkeren, verkleinen of vergroten.


- Keer het geselecteerde gebied om

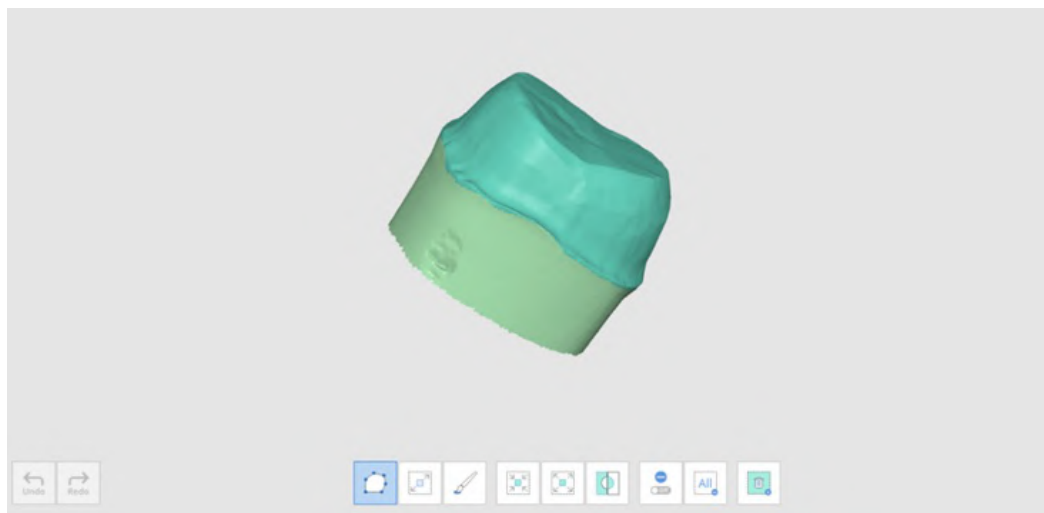

- Verklein het geselecteerde gebied

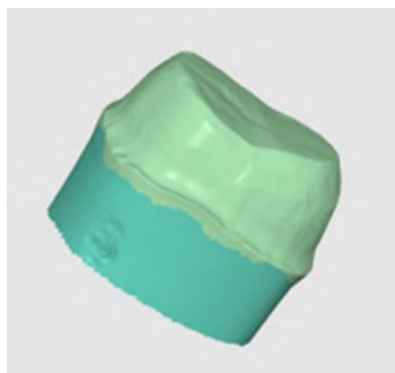


- Vergroot het geselecteerde gebied

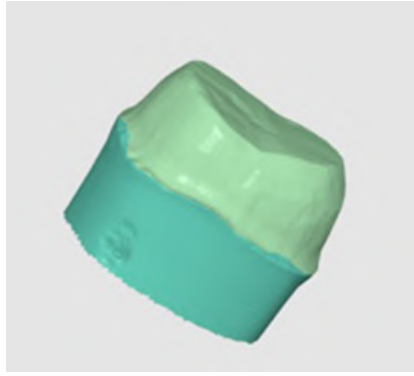



3. U kunt de geselecteerde gebieden deselecteren met het instrument "Geselecteerd gebied wissen".

Optimaliseer occlusie-uitlijning

Optimaliseer de occlusie-uitlijning. U kunt de doelgegevens kiezen en de occlusie-uitlijning aanpassen.

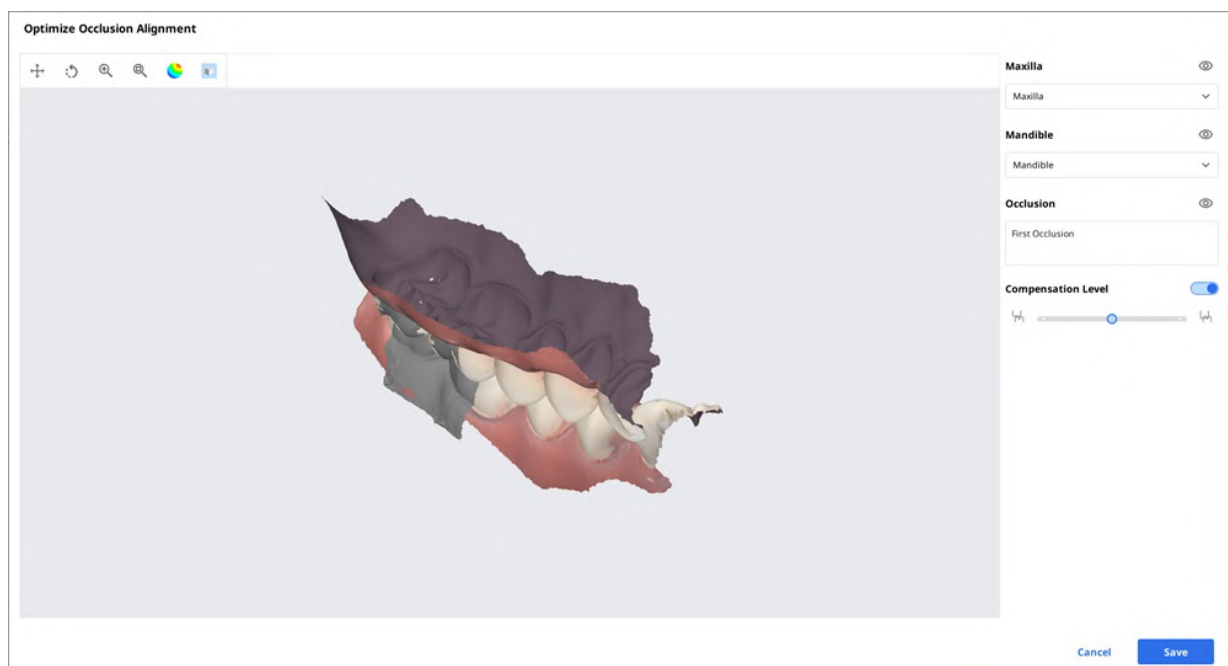


Compensatieniveau

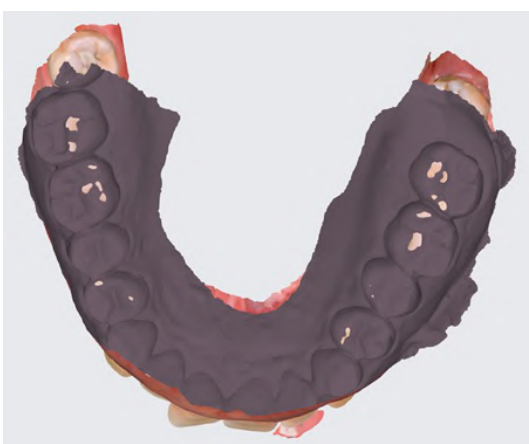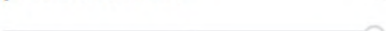Laag	Compensation Level    	
Gemiddeld	Compensation Level    	
Hoog	Compensation Level    	
Uit	Compensation Level    	

Onderkaakbeweging

U kunt de onderkaakbewegingen die zijn opgenomen in Medit Scan for Clinics afspelen om de dynamische occlusale contacten tussen het boven- en ondergebit te zien.

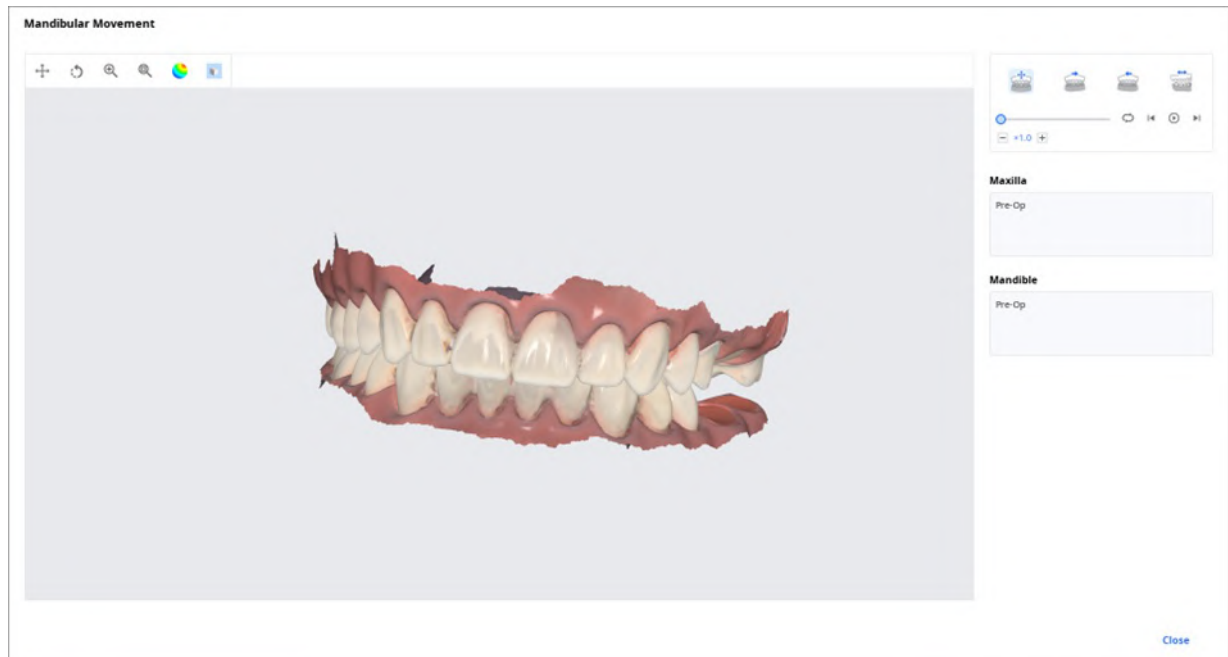

	Vrije beweging	Speel de opname van de vrije onderkaakbeweging af.
	Linker laterale beweging	Speel de opname van de naar links bewegende onderkaak af.
	Rechter laterale beweging	Speel de opname van de naar rechts bewegende onderkaak af.
	Protrusieve beweging	Speel de opname van de voorwaarts bewegende onderkaak af.

Beheer Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker

U kunt meerdere resultaten van occlusiegegevens krijgen uit de Medit Scan-applicatie.

Medit Link biedt de functie om de resultaten te beheren via de "Bestandenbekijker".

Meerdere resultaten beheren


Wanneer de gebruiker meerdere occlusieresultaten krijgt van Medit Scan for Clinics, biedt Medit Link de mogelijkheid om een resultaat te selecteren.

De lijst met resultaten wordt op naam weergegeven en u kunt één object selecteren.

Het geselecteerde model wordt weergegeven in de "Gegevensboom" en het "Modelweergavegebied".



U kunt de lijst inklappen en het object wijzigen met behulp van de pijlsymbolen.

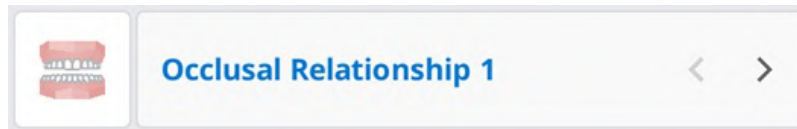

Weergaveopties

U kunt de weergaveopties wijzigen om de opmaak van de dossierlijst in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box aan te passen.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilters

Toon of verberg elk filter dat de status van het dossier weergeeft. De verborgen statusfilters worden niet weergegeven op het scherm in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Met statusfilters kunt u eenvoudig het dossier vinden dat u nodig heeft.

- U kunt op de status klikken die u wilt bekijken om alleen dossiers in die status weer te geven.
- U kunt meerdere statussen tegelijk selecteren.

Voor elke box zijn de volgende filteropties beschikbaar:

Box	Statusfilters
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabel items

Selecteer de objecten die moeten worden weergegeven in de dossierlijst in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. U kunt de volgorde van de tabelitems wijzigen of de kolombreedte van de tabel in de lijstweergave aanpassen om deze optimaal af te stemmen op de gebruikersomgeving.

Voor elke box zijn de volgende tabelitems beschikbaar:

Box	Tabel items
Patient	Patiëntnaam / Patiënt-ID / Geslacht / Aantal dossiers / Registratiedatum / Geboortedatum / Laatste scandatum
Case Box	Status / Dossiernaam / Geboortedatum / Formulierinformatie / Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
Order Box	Status / Dossiernaam / Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam / Aangevraagde bezorgdatum / Gewijzigd op
In Box	Status / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Gewijzigd op / Praktijknaam
Work Box	Status / Dossiernaam / Patiëntnaam / Formulierinformatie / Gewijzigd op / Aangevraagde bezorgdatum / Scandatum / Praktijknaam / Besteldatum

Weergavetype

Wijzig het weergavetype tussen galerijweergave en lijstweergave op de Case Box.

Voor elke box zijn de volgende weergavetype-opties beschikbaar:

Box	Weergavetype-opties
Patient	Lijstweergave
Case Box	Lijstweergave / Galerijweergave
Order Box	Lijstweergave
In Box	Lijstweergave
Work Box	Lijstweergave

Groeperen

Selecteer een groeperingsoptie om dossiers in de lijst in te delen en te rangschikken op basis van de geselecteerde optie.

Voor elke box zijn de volgende groeperingsopties beschikbaar:

Box	Groeperingsopties
Case Box	Geen / Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum
Order Box	Geen / Scandatum / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum
In Box	Geen / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum
Work Box	Geen / Aangevraagde bezorgdatum

Opmerking

De groeperingsopties zijn niet beschikbaar in Patient, Case Talk en Trash Box.

Sorteren

Selecteer een sorteroptie om de volgorde van de dossiers in de lijst te wijzigen op basis van de geselecteerde optie.

Voor elke box zijn de volgende sorteropties beschikbaar:

Box	Groepering	Sorteeropties
Patient	-	Patiëntnaam / Patiënt-ID / Geboortedatum / Registratiedatum / Aantal dossiers / Laatste scandatum
Case Box	Geen	Patiëntnaam / Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Patiëntnaam	Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Gewijzigd op / Scandatum / Laboratoriumnaam
Order Box	Geen	Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
In Box	Geen	Patiëntnaam / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Besteldatum / Praktijknaam
Work Box	Geen	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Praktijknaam

Opmerking

De sorteeropties zijn niet beschikbaar in Case Talk en Trash Box.

Filteren en zoeken

Op patiënt filteren

Filter en toon dossiers op patiëntnaam. U kunt een lijst maken door alleen de patiënten te filteren waaraan u moet werken.

MEDIT Link

 **Case Box**

 ☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

1. Voer een patiëntnaam in.

Patient 

won|

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selecteer de patiënten uit de zoekresultaten hieronder.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

- Alleen dossiers van de geselecteerde patiënten worden in de lijst weergegeven.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Op datum filteren

Filter en toon dossiers die het laatst gewijzigd zijn binnen de ingestelde periode.

- Klik op de periodefilter.

2020-08-10 ~ 2020-09-09


2. Selecteer de duur uit de lijst.

- Alle: Toont alle dossiers.
- Aangepast bereik: Geef de begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die het laatst zijn gewijzigd binnen de periode.
- Vandaag: Toont de dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- Gisteren: Toont de dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 30 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Deze maand: Toont de dossiers die in deze maand voor het laatst zijn gewijzigd.
- Vorige maand: Toont de dossiers die in de afgelopen maand zijn gewijzigd.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Geavanceerde zoekmogelijkheden


Gebruik de zoekmogelijkheden om snel de gewenste informatie te vinden.

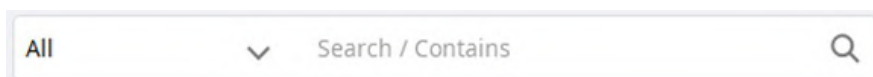A search bar with a dropdown menu currently showing 'All'. To the right of the dropdown is the text 'Search / Contains' and a magnifying glass icon.

De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar voor elke box:

Patient	Alle, Patiëntnaam, Patiënt-ID
Case Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Formulierinformatie, Laboratoriumnaam
Order Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Laboratoriumnaam, Order-ID
In Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Order-ID
Work Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Formulierinformatie, Klinieknaam, Order-ID
Case Talk	Case Talk naam (bevat), Patiëntnaam (gelijk aan)
Trash Box (Clinic)	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Laboratoriumnaam, Wissen op
Trash Box (Lab)	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Wissen op

U kunt zoekcriteria selecteren en kiezen tussen "Bevat" en "Gelijk aan".

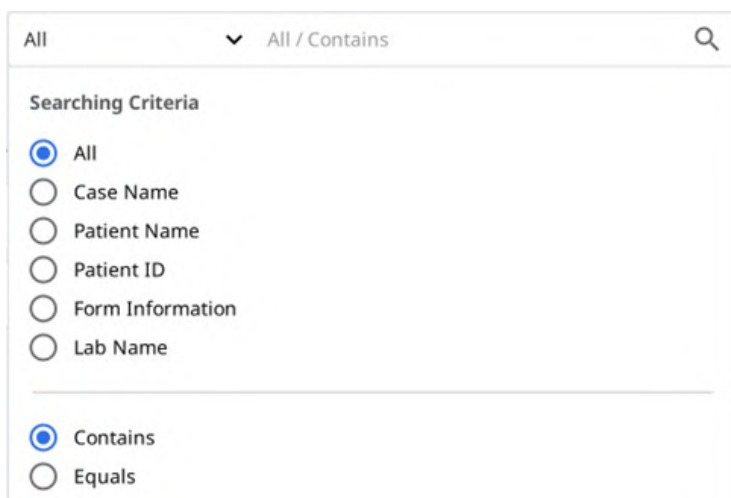
An interface for selecting search criteria. At the top, there's a dropdown menu with 'All' selected and the text 'All / Contains' next to it, followed by a search icon. Below this is a section titled 'Searching Criteria'. It contains two groups of radio buttons. The first group has options: 'All' (selected), 'Case Name', 'Patient Name', 'Patient ID', 'Form Information', and 'Lab Name'. The second group has options: 'Contains' (selected) and 'Equals'.

Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen

Dossiers aanmaken

Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)

1. Klik op "Nieuw dossier" in de rechterbovenhoek.

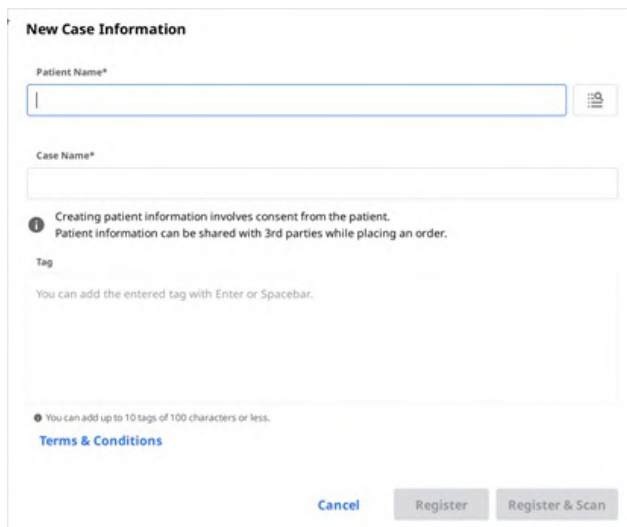

The form is titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:


- Patient Name***: A text input field with a small icon to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A paragraph stating: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field with a placeholder "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: A link "Terms & Conditions", a "Cancel" button, a "Register" button, and a "Register & Scan" button.

2. Voer basisinformatie in, zoals de patiëntnaam en de dossiernam.

- Als u een naam invoert die niet op de patiëntenlijst voorkomt, wordt een nieuwe patiënt toegevoegd.
- Als u een naam invoert die in de patiëntenlijst staat, kunt u deze uit de lijst selecteren.
- Als u een dossier voor een bestaande patiënt registreert, klikt u op het pictogram "Patiëntenlijst" om een bestaande patiënt te selecteren.



- In het dialoogvenster Patiëntenlijst kunt u een nieuwe patiënt registreren of de gegevens van een bestaande patiënt bewerken.

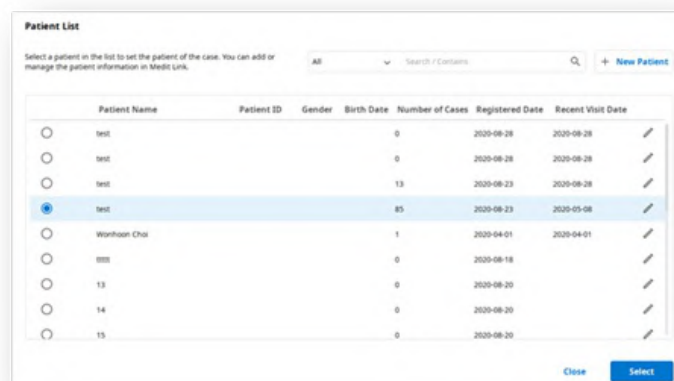

The dialog box is titled "Patient List". It contains a table with the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. The table has 10 rows of data. The first row is selected. Below the table are "Close" and "Select" buttons.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date
test				0	2020-08-28	2020-08-28
test				0	2020-08-28	2020-08-28
test				13	2020-08-23	2020-08-28
test				85	2020-08-23	2020-05-08
Worham Choi				1	2020-04-01	2020-04-01
test				0	2020-08-18	
13				0	2020-08-20	
14				0	2020-08-20	
15				0	2020-08-20	

3. De dossiernam wordt automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Klik op "Registreren en scannen" om de registratie van het dossier te voltooien en te beginnen met scannen.

- **Registreren:** U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina. Dit is nuttig bij het registreren van meerdere dossiers.
- **Registreren en scannen:** Ga naar het tabblad Formulier om formulierinformatie voor het dossier in te voeren.

Dossier aanmaken in Work Box (Lab)

1. Klik in de rechterbovenhoek op "Nieuw dossier".

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Voer de naam van de praktijk in of selecteer deze.
3. Voer de patiëntnaam en de dossiernaam in. De dossiernaam wordt automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid.
5. Na registratie van het dossier wordt u doorgestuurd naar de hoofdpagina.

Dossiers bewerken

Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)

1. Klik op "Wijzigen" naast de dossiernaam.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

- Klik op "Zoeken" om de patiëntnaam te wijzigen. U kunt dit niet direct bewerken; in plaats daarvan kunt u een patiëntnaam zoeken waarmee u de huidige patiënt wilt vervangen en de informatie van die patiënt in de lijst bewerken.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Selecteer de patiëntnaam waarmee u de huidige wilt vervangen.
- Om een nieuwe patiënt aan te maken, drukt u op de knop "Nieuwe patiënt".
- Gebruik de knop "Wijzigen" om de geregistreerde informatie over de patiënt te wijzigen.
- Klik op "Toepassen" om het proces af te ronden.

Dossier bewerken in Work Box (Lab)

- Klik op "Wijzigen" naast de dossiernummer.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Klik op "Toepassen" als de bewerking is voltooid.

Opmerking

U kunt de informatie van de dossiers die u via de order in In Box heeft ontvangen niet wijzigen.

Dossiers kopiëren

Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)

- Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



- U wordt gevraagd welke informatie u naar het nieuwe dossier wilt kopiëren.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Kies of u alleen formulierinformatie of alle gegevens wilt kopiëren.
- Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".

Dossier kopiëren in Work Box (Lab)

- Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



- Kopieer alle gegevens om een nieuw dossier aan te maken.
- Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".


Dossier wissen

Dossier wissen (Clinic en Lab)

1. Klik op het "Wissen"-pictogram.



2. Klik op "OK" om het dossier te wissen.

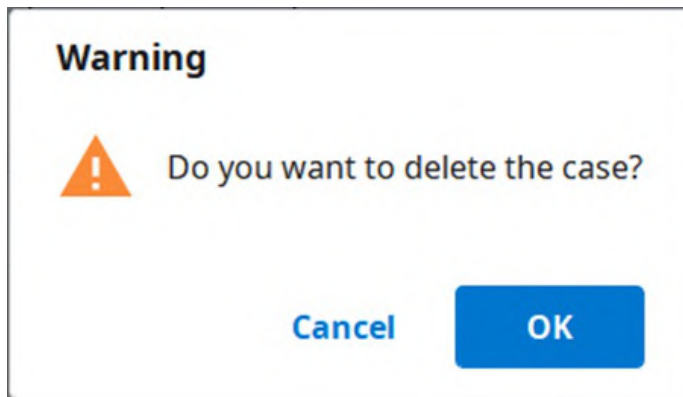

3. Gewiste dossiers worden verplaatst naar de Trash Box en kunnen indien nodig worden hersteld.

Formulierinformatie

Voer de formulierinformatie in op basis van het verbonden programma en het type behandeling.

De informatie die u invoert, wordt gebruikt als basisinformatie voor het werken met scan- of CAD-programma's en het plaatsen van orders.

Formulierinformatie registreren in Case Box

Voer in op het tabblad Formulier

1. Selecteer of u behandelingsinformatie per tand of per boog wilt invoeren.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd in de orderlijst.
3. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Formulierinformatie registreren in Work Box

Voer in op het tabblad Formulier


1. Selecteer het scanprogramma dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer een van de volgende opties die uw scanstrategie bepalen: Tandem/Flexibele multi-mal/Multi-mal.
3. De methoden kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde scanprogramma.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tanden	O	O
Boog	O	O
Flexibele multi-mal	X	O
Multi-mal	X	O

4. Selecteer tanden, boog of malnummers voor het scanproces.
5. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd op de lijst.
6. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Tanden verbinden tot brug

U kunt meerdere tanden tot een brug verbinden wanneer hetzelfde materiaal op meerdere aangrenzende tanden wordt aangebracht. Klik op het brugpictogram naast de geselecteerde tanden om ze te verbinden of te scheiden.

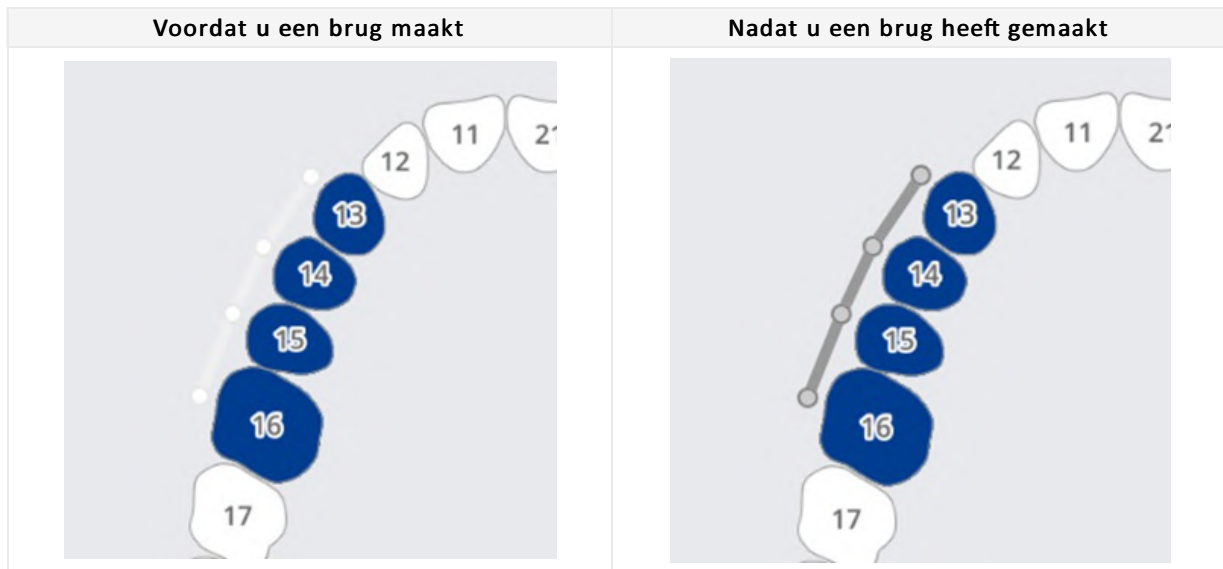

Scanopties instellen

Afhankelijk van het programma waarmee u werkt, worden verschillende scanopties geboden.

De geselecteerde scanopties worden doorgegeven aan elk scanprogramma.

Medit Scan for Labs

Algemene opties

	Aangrenzende tanden	Markeer de voorbereide en aangrenzende tanden en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Antagonist	Markeer automatisch de antagonisten en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Articulator	Geef opties weer voor het selecteren van de articulator in het scanprogramma.
	Bewegingsmarkering	Sta het gebruik van de scanstrategie "Kaakbeweging" in het scanprogramma toe.

Opties per tand

	Scanlichaam	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van scanlichamen in het scanprogramma.
	Pre-operatie scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van een pre-operatie model in het scanprogramma.
	Wamodel scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van wax-ups in het scanprogramma.

Aan favorieten toevoegen

U kunt snel een product selecteren door het als favoriet op te slaan.

De lijst met opgeslagen favorieten wordt beheerd als een sjabloon en kan worden gedeeld via de export- en importfuncties.

Aan favorieten toevoegen

1. Selecteer het tandnummer.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Type – Methode – Materiaal – Tinten kunnen als favoriet worden opgeslagen, zelfs als ze niet allemaal zijn geselecteerd.
3. Klik op het "Ster"-pictogram.

4. Een combinatie van de geselecteerde parameters, met uitzondering van het tandnummer, staat op uw favorietenlijst.

Favoriete sjablonen beheren

U kunt verschillende soorten sjablonen opslaan, beheren en delen.

Toevoegen	Voeg een nieuw sjabloon toe.
Hernoemen	Hernoem het huidige sjabloon.
Wissen	Wis het huidige sjabloon.
Exporteren	Exporteer het huidige sjabloon naar een bestand.
Importeren	Importeer een sjabloonbestand.

Werken aan scannen/CAD

Scanproces

Op basis van de ingevoerde informatie gaat u verder met scannen.

1. Voer behandelingsinformatie in/ sla deze op en selecteer de nodige scanopties.
2. Klik op de knop "Scannen" in de rechterbovenhoek van het venster.

CAD-proces


Medit Link biedt de DentalCAD integratie-app om Medit Link met DentalCAD te verbinden.

1. Installeer de DentalCAD Integratie app in de App Box.
2. Ga naar de dossierdetails en klik op het pictogram van de DentalCAD Integratie app in de Quick Launcher.
3. Geef in het pop-up dialoogvenster het pad op naar de DentalCAD app die op uw pc is geïnstalleerd.
4. Voer de dossierdetails van het gescande dossier in en klik op het pictogram van de DentalCAD Integratie app, waarmee een dialoogvenster verschijnt om een dentalProject bestand aan te maken.
5. Voer formulierinformatie voor DentalCAD in en klik op "Openen" om het CAD-programma te openen.
6. Wanneer u de DentalDB Integratie app installeert, worden de CAD-resultaten automatisch opgeslagen op het door u aangegeven opslagpad in exocad. (Alleen laboratoriumaccounts)


Add-in apps gebruiken

Invoegtoepassing Quick Launcher

U kunt verschillende add-in apps direct uitvoeren door op de geïnstalleerde app-pictogrammen in de Quick Launcher te klikken. U kunt de volgorde van app-pictogrammen wijzigen door ze te verslepen.

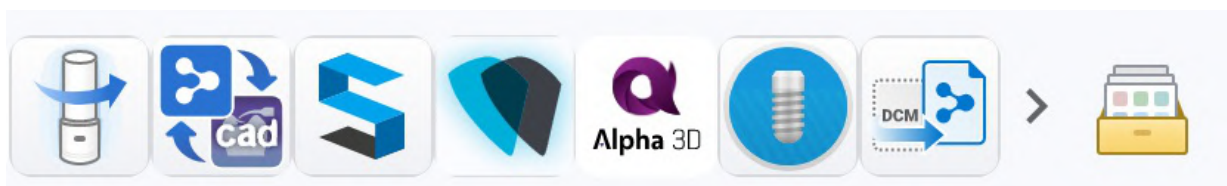

App launcher beheer

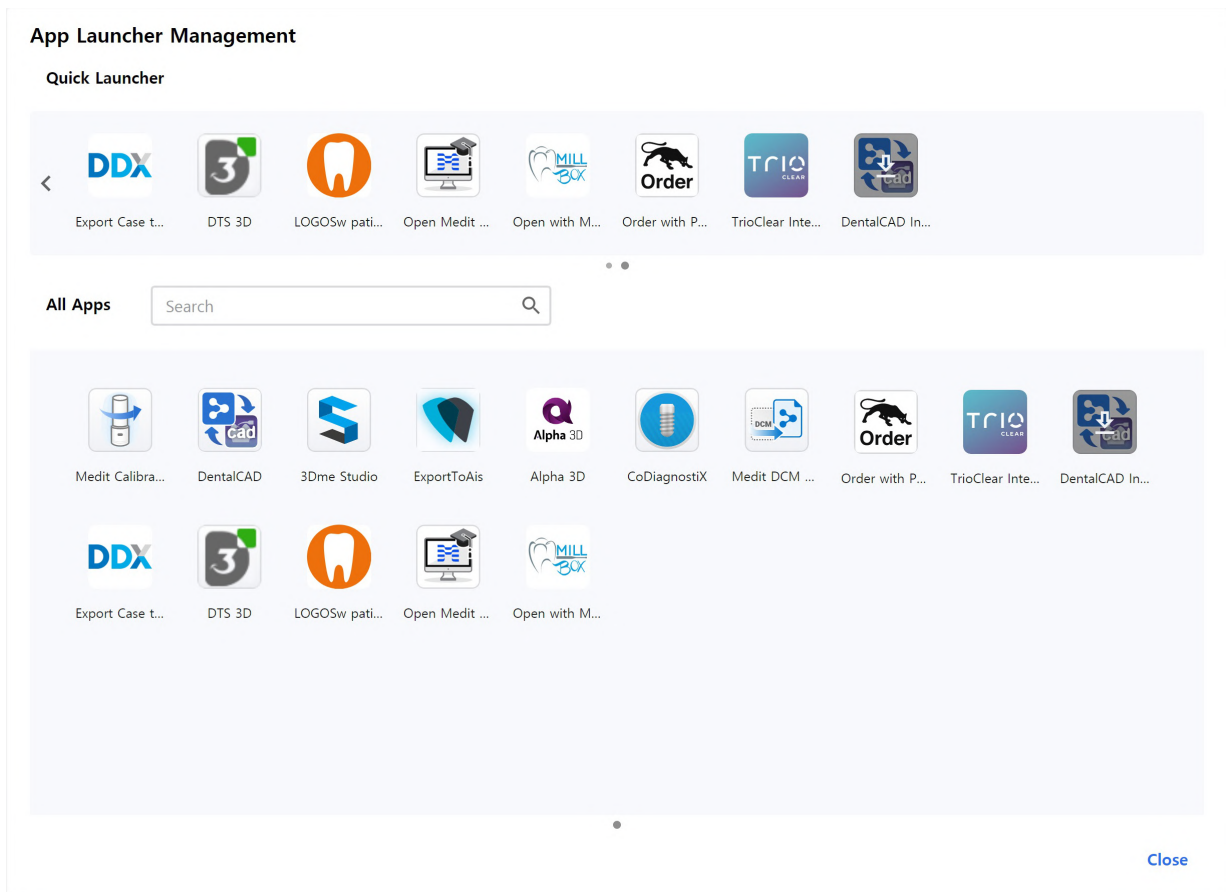

Quick Launcher

U kunt bepalen welke apps in de Quick Launcher worden weergegeven. U kunt de volgorde van app-pictogrammen wijzigen door ze te verslepen, of u kunt mappen maken om gelijksoortige apps te groeperen en ze op die manier te ordenen.

Alle apps

Alle door u geïnstalleerde apps worden weergegeven. U kunt met de rechtermuisknop op een app-pictogram klikken om de app toe te voegen aan de Quick Launcher. Vanuit het contextmenu van de rechtermuisknop kunt u ook kiezen om de app te openen, te installeren of te verwijderen.

Resultaatbestanden krijgen

Bestanden met scanresultaten exporteren

Naast het delen van resultaten met partners via bestellingen, biedt Medit Link ook de mogelijkheid om uw resultaatbestanden op te slaan in het gewenste bestandsformaat door gebruik te maken van de exportfunctie.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Exporteer bestanden naar	Geef het pad op waar u de resultaatbestanden wilt opslaan.
Mapnaam	Het systeem creëert een nieuwe map en slaat alle resultaatbestanden daarin op. De standaard mapnaam wordt ingesteld aan de hand van de naamgevingsregel. U kunt ook zelf de mapnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor mapnaam.
Bestandsnaam	Stel de bestandsnaam voor het resultaat in. De naamgevingsregel bepaalt de standaard bestandsnaam. U kunt ook zelf de bestandsnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor bestandsnaam
Type	Selecteer het ontwerpprogramma dat u wilt gebruiken. Medit Link past de bestanden automatisch aan op basis van uw keuze, waardoor u verder kunt gaan met het ontwerp zonder extra asuitlijning nodig te hebben.
Meshformaat	Geef het formaat van het mesh-bestand aan.
Afbeeldingsformaat	Geeft het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Bestanden comprimeren	Comprimeer alle resultaten tot één bestand.
Individuele mesh samenvoegen	Combineer het resultaat van de bovenkaak of onderkaak met de individuele tand. Het is nuttig wanneer het importeren van meerdere bestanden in een programma niet mogelijk is.
Exporteer alle occlusale relaties	Wanneer meerdere occlusale resultaten vanuit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale resultaten in één keer exporteren.
Sla de dossierinformatie op als PDF	Sla de dossierinformatie op als een PDF met het resultaat.

Resultaatbestanden exporteren vanuit de dossierlijst

U heeft de mogelijkheid resultaatbestanden van een enkel dossier of van meerdere dossiers tegelijkertijd te exporteren met de optie "Exporteren" boven de dossierlijst in de Case Box en Work Box.

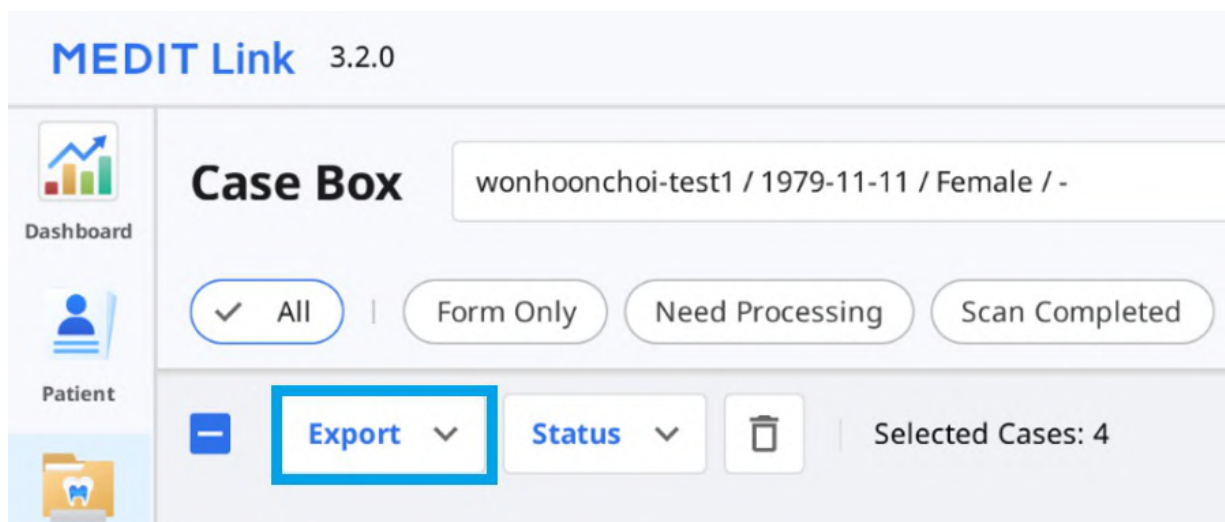

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Selecteer alle dossiers waarvan u resultaatbestanden wilt exporteren uit de lijst.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Klik op "Exporteren" en selecteer "Resultaatbestanden".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Stel de doelmap, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Opmerking

De velden "Mapnaam" en "Bestandsnaam" kunnen niet worden bewerkt bij het exporteren van bestanden voor meerdere dossiers.

De mapnaam en bestandsnaam worden automatisch aangemaakt aan de hand van de regels die u hebt ingesteld voor de opties "Regel voor mapnaam" en "Regel voor bestandsnaam" in Instellingen > Export opties.

- Klik op "Exporteren".
- Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Resultaatbestanden exporteren vanuit Bestandenbekijker

Om bestanden met scanresultaten voor een dossier te exporteren, gebruikt u het pictogram "Exporteren" in de rechterbovenhoek van het tabblad "Bestandenbekijker".

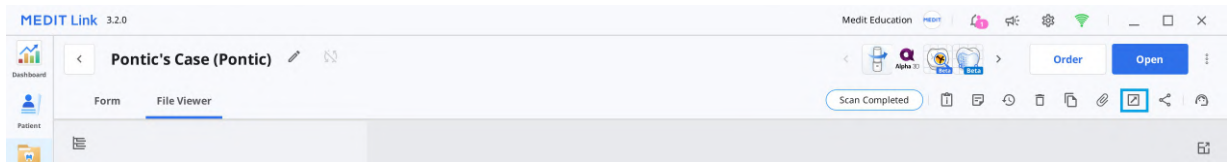

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Klik om een dossier uit de lijst te openen.
3. Klik op het pictogram "Exporteren" in de rechterbovenhoek van het tabblad "Bestandenbekijker".

4. Stel de doelmap, de mapnaam, de bestandsnaam, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. In het tabblad "Bestandslijst" kunt u de benodigde bestanden voor het dossier selecteren door overbodige bestanden te deselecteren.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒ Base

☒

Mandible

☒ Base

☒

Occlusion

☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒ Maxilla
☒ Mandible

☒

Face Scan Data

☒ Face Scan Data

Close

Export

6. Klik op "Exporteren".
7. Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

Question

?

Exporting successfully completed.


Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Resultaatbestanden exporteren vanuit de Gegevensboom


U kunt een bestand of bestanden in een specifieke gegevensgroep exporteren vanuit het uitgeklapte menu in de Bestandsweergave.

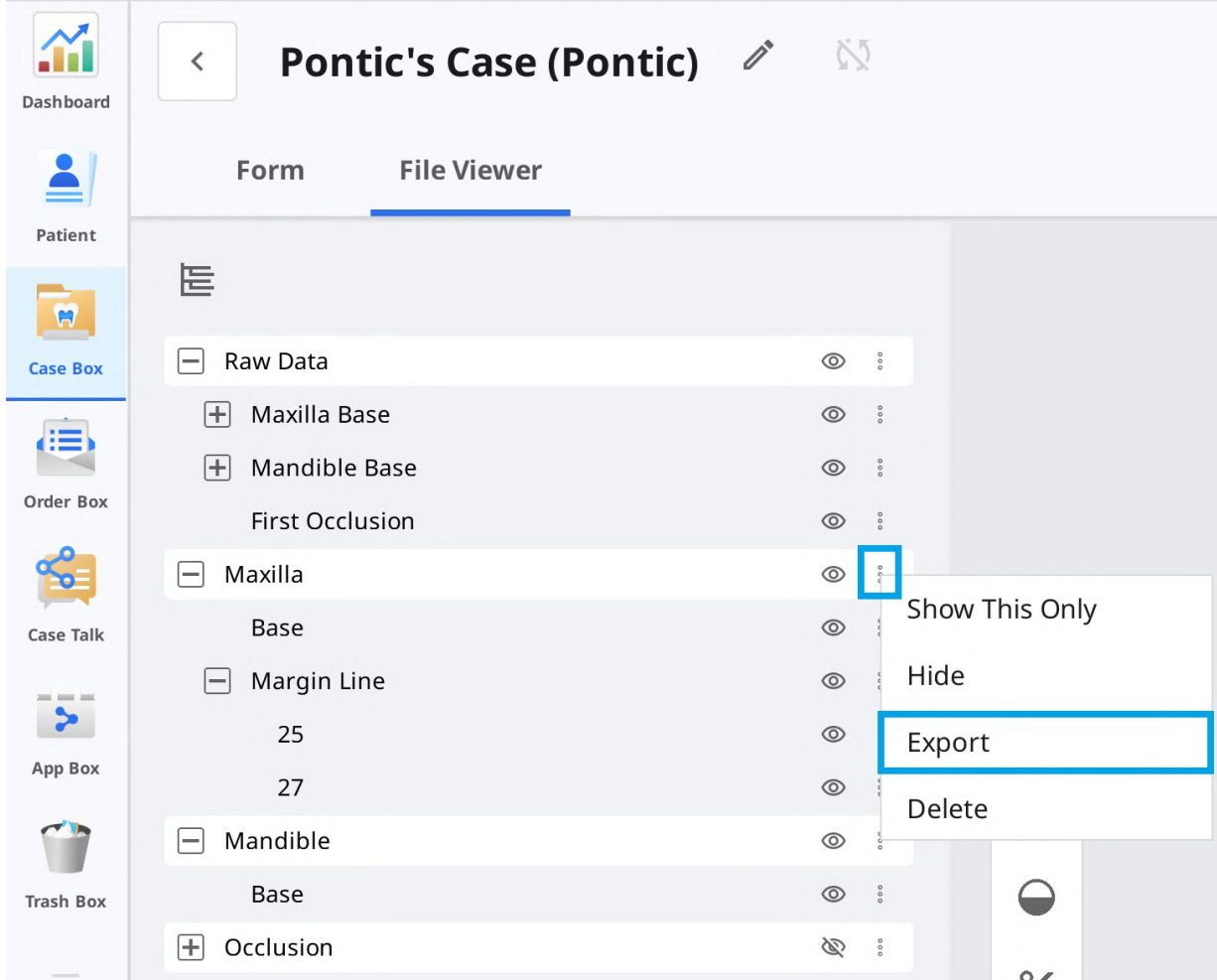

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Klik om een dossier uit de lijst te openen.
3. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast de gegevensgroep of een object in de gegevensboom op het tabblad "Bestandenbekijker".



4. Klik vervolgens op "Exporteren".

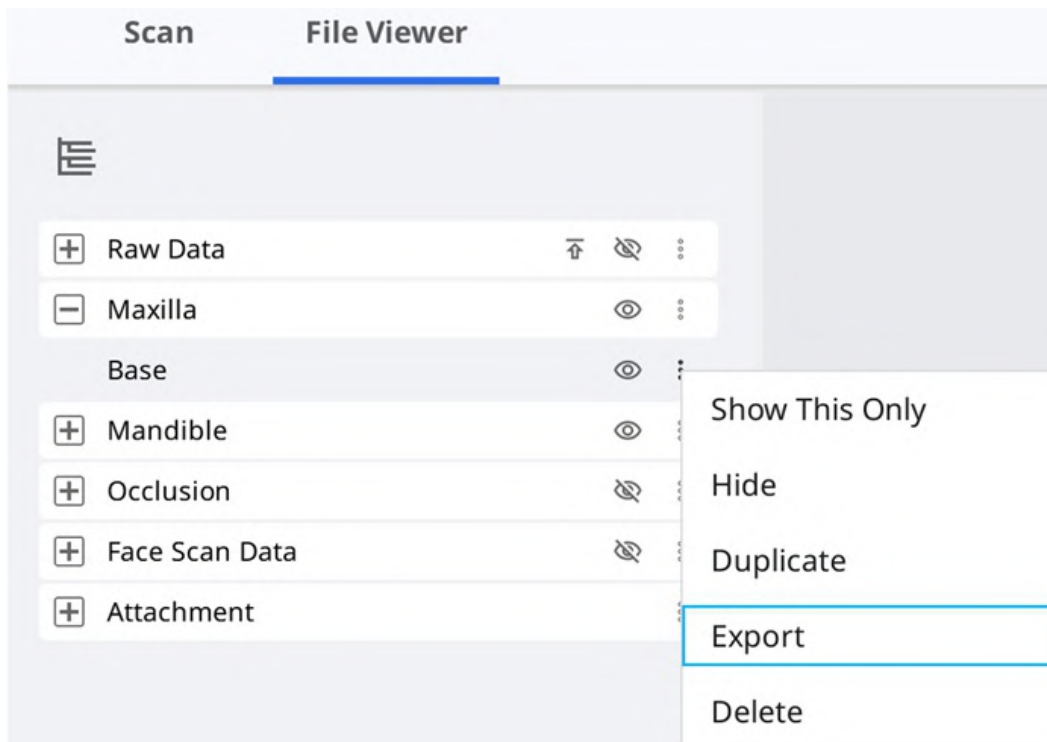

5. Stel de doelmap, de mapnaam, de bestandsnaam, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. U ziet dat alleen de bestanden die u in de gegevensboom hebt gekozen, geselecteerd zijn in de Bestandslijst.

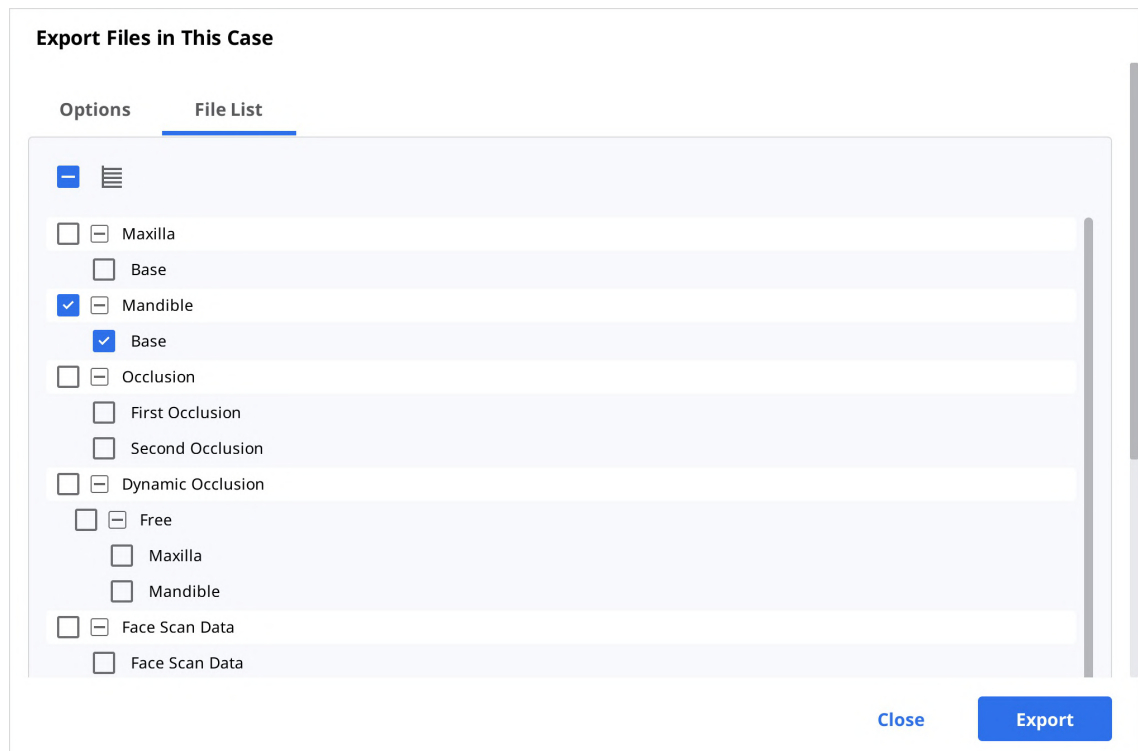

7. Klik op "Exporteren".
8. Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

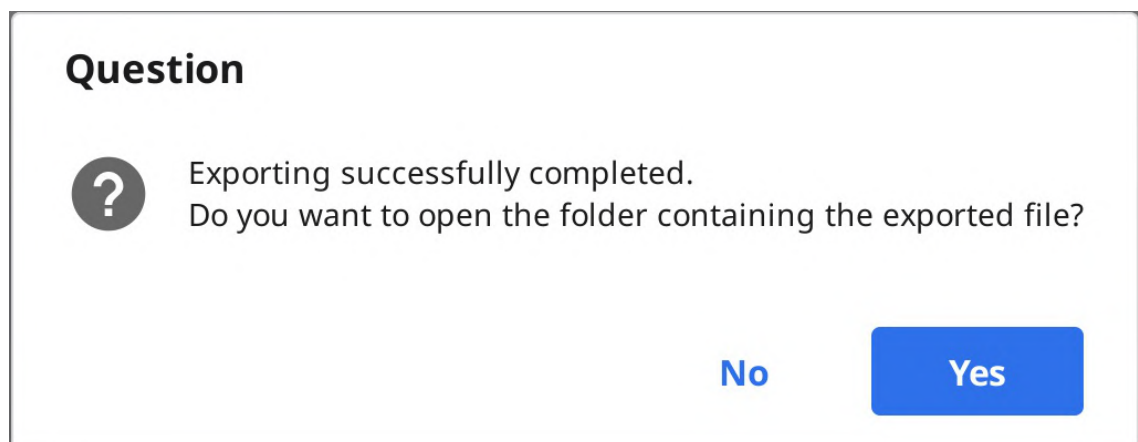

Dossierlijst exporteren als CSV

Medit Link biedt de optie om de dossierlijst in CSV-formaat te exporteren.

U kunt de dossierlijst met basisinformatie exporteren en dossiers eenvoudig beheren.

1. Ga naar Case Box, Order Box, In Box, of Work Box.
2. Selecteer de dossiers die u wilt exporteren.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

- Klik op "Exporteren" en kies "Dossierlijst (zoals weergegeven)" of "Dossierlijst (met alle items)".

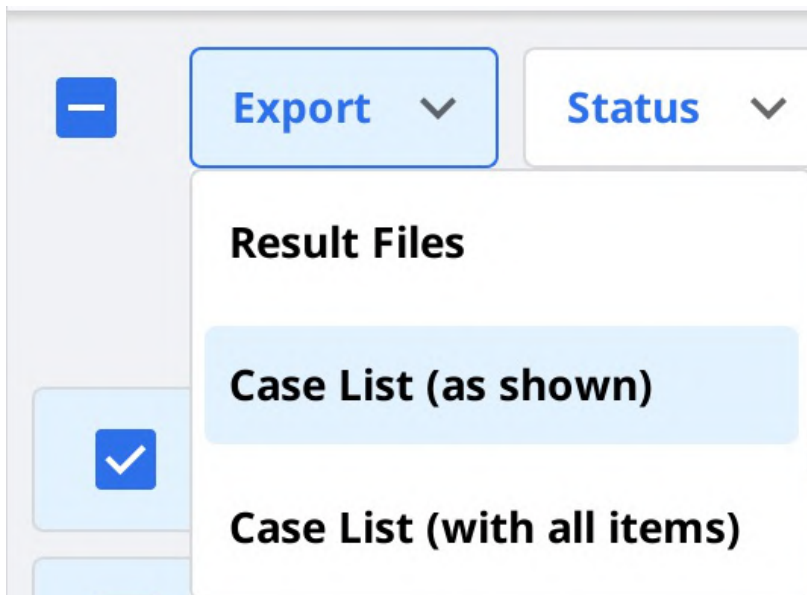

Opmerking

Dossierlijst (zoals weergegeven): Exporteer de dossierlijst met de momenteel weergegeven items op het scherm. Ga naar Weergaveopties > Tabel items om de items naar wens te tonen of te verbergen.
Dossierlijst (met alle items): Exporteer de dossierlijst met alle items, inclusief Status, Dossiernaam, Geboortedatum, Formulierinformatie, Gewijzigd op, Scandatum, Besteldatum en Laboratoriumnaam.

- Stel het pad en de bestandsnaam in en sla de lijst op.
- De dossierlijst wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

Margelijn exporteren


Medit Scan for Clinics biedt een functie om de margelijn te maken en Medit Link kan de margelijn naar het CAD-programma overbrengen.

Exporteer margelijn als kleur

Over het algemeen converteert Medit Link de margelijn als kleur en exporteert het resultaat samen met de bovenkaak of onderkaak. U kunt de margelijn in hun cad maken met verwijzing naar de kleurinformatie.

Voorbeeld:

Bovenkaak

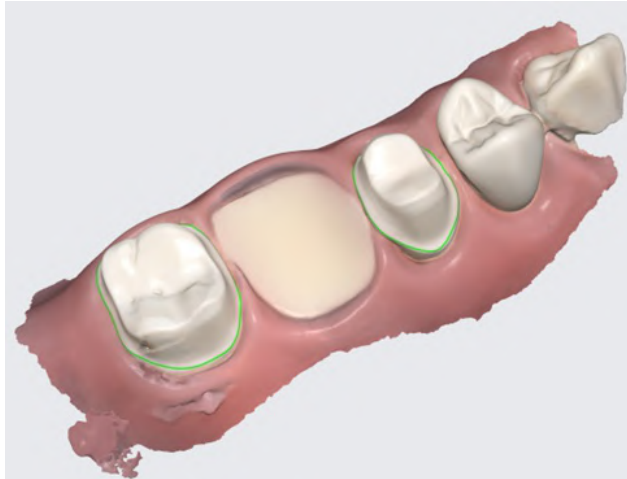

Resultaat met de margelijnen als kleurinformatie

Opmerking

Deze functie is beschikbaar voor formaten die kleurinformatie bevatten, zoals meditMesh, OBJ en PLY. De margelijnen kan niet worden omgezet in STL.

Opmerking

Type > 3Shape ondersteunt deze functie niet.


Exporteer margelijnen als bestand

In het geval van Exocad exporteert Medit Link de margelijnen naar "~margin.xyz" die rechtstreeks in exocad kan worden geïmporteerd.

U kunt dit bestand zonder extra werk in exocad gebruiken.


Voorbeeld:

Bovenkaak

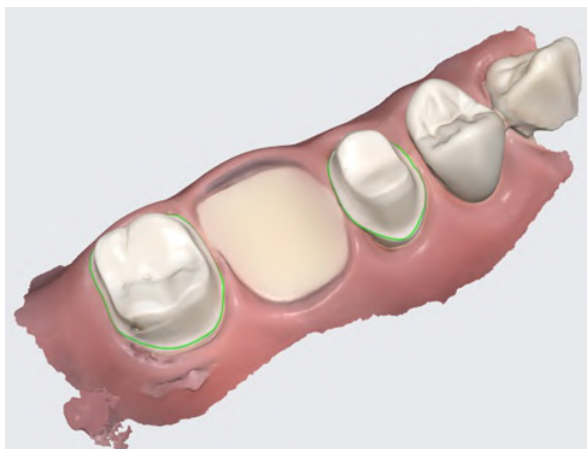

Resultaat met de margelijnen als kleurinformatie

Margelijn

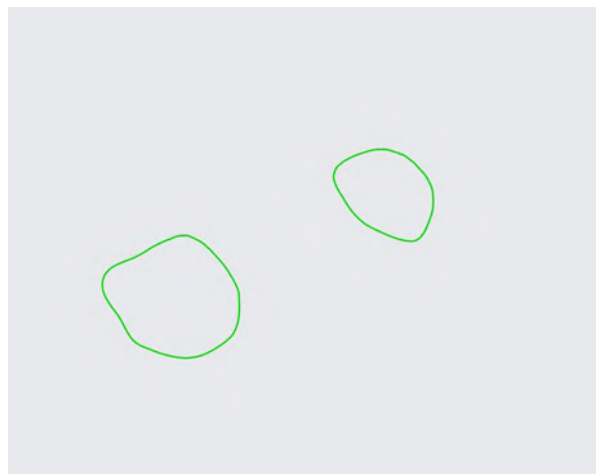

Margelijn geëxporteerd als individuele bestanden

Bestanden van Medit Link Web downloaden

Medit Link biedt een downloadfunctie.

Als u de resultaatbestanden wilt ontvangen zonder de Medit Link-applicatie te installeren, kunt u de bestanden downloaden via de Medit Link-webservice.

Opmerking


De gegevens moeten worden geüpload op de Medit Cloud om de bestanden van het web te downloaden.

De downloadfunctie is beschikbaar in het volgende menu van de Medit Link-webservice.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

De "Download"-knop bevindt zich rechtsboven.

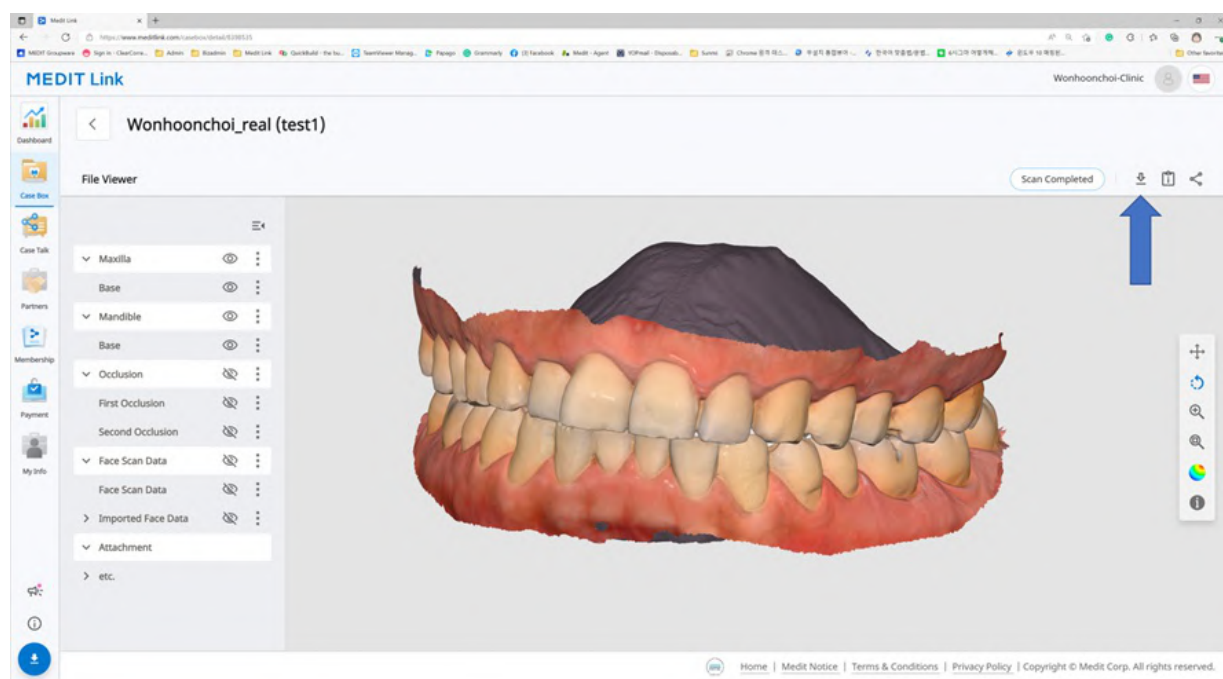

Web Viewer

Wanneer u het dossier deelt via Case Talk, kunt u instellen of u downloaden toestaat of niet.

Als u "Downloadtoestemming verlenen" aanvinkt en het dossier deelt, kunnen alle gebruikers die verbinding maken met de gedeelde link de bestanden downloaden.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

In de Web Viewer vindt u rechtsboven het pictogram "Downloaden".

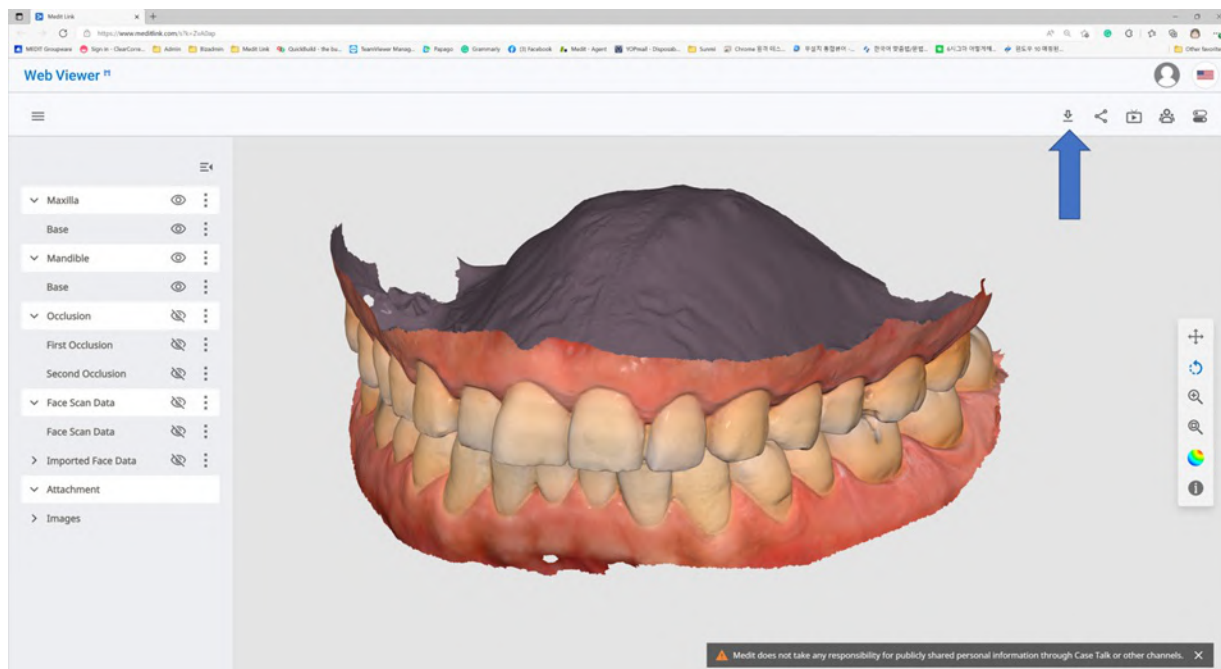

1. Klik op "Downloaden".



2. Selecteer het meshformaat in het downloaddialogvenster.

Download **Premium Feature**

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

- i** The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
- i** The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

- Klik vervolgens op "OK".

Dossiers bestellen/beheren

U kunt eenvoudig een dossier bestellen met gegevens die zijn verkregen uit gekoppelde programma's en die door de gebruiker zijn bijgevoegd.

Dossiers bestellen

U kunt een order plaatsen voor uw partners in Case Box.

1. Klik op de "Order"-knop.
2. Controleer de informatie die nodig is voor uw order.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:

- Order** (Section Header)
- General** (Tab), **Order List** (Tab), **File List** (Tab)
- Partner** (Dropdown menu): WonhoonChoi_Lab_Stage
- Partner Information** (Card):
 - Icon: A person at a computer.
 - WonhoonChoi_Lab_Stage**
 - Seoul, KR
 - [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 - 01026088546
- Case Name** (Text field): mandibluar movement - Clone - Clone
- Patient Name** (Text field): Test Occlusion
- ☒ **Share patient information**
- Requested Delivery Date** (Calendar icon): 2023-04-13
- Delivery Time** (Clock icon): 오전 8:15 (AM 8:00 to PM 8:00 range)
- Memo** (Text area):
- Tags** (Text area): You can add the entered tag with Enter or Spacebar.
- You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
- ☒ **Include all occlusion relationships in the order**
- ☒ **Include Tags In The Order**
- Buttons**: Cancel, OK


3. Selecteer een partner.
4. Controleer de productinformatie in het tabblad "Orderlijst"
 - U kunt beslissen of u de naam van de patiënt wilt delen.
5. Kies de te bestellen bestanden in het tabblad "Bestandslijst"
6. Voer uw gewenste bezorgdatum in.
 - De standaardwaarde is ingesteld op 7 dagen na de orderdatum.
7. U kunt notities en tags toevoegen voor uw partner om specifieke details te vermelden.
8. Wanneer meerdere occlusale resultaten uit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale

resultaten in één keer verzenden door "Alle occlusale relaties bestellen" aan te vinken.

9. Ga verder met uw order.


Order bevestigen (In Box)

- Accepteer de order bij ontvangst.
- Geaccepteerde orders worden doorgestuurd naar de Work Box.

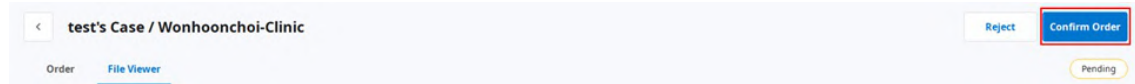


Order annuleren (Order Box)

- U kunt een order annuleren voordat uw partner deze accepteert.
- Geannuleerde dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

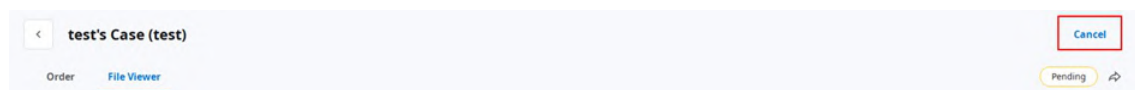


Order afwijzen (In Box)

- U kunt een ontvangen order afwijzen.
- Afgewezen dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

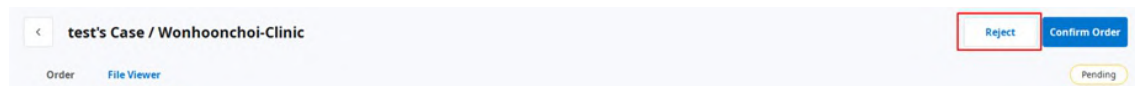

Bestelde dossiers controleren

U kunt de details van het dossier dat u in de Order Box heeft besteld controleren in het clinic-account. U kunt ook het dossier controleren dat u van het In Box in het lab-account heeft ontvangen.

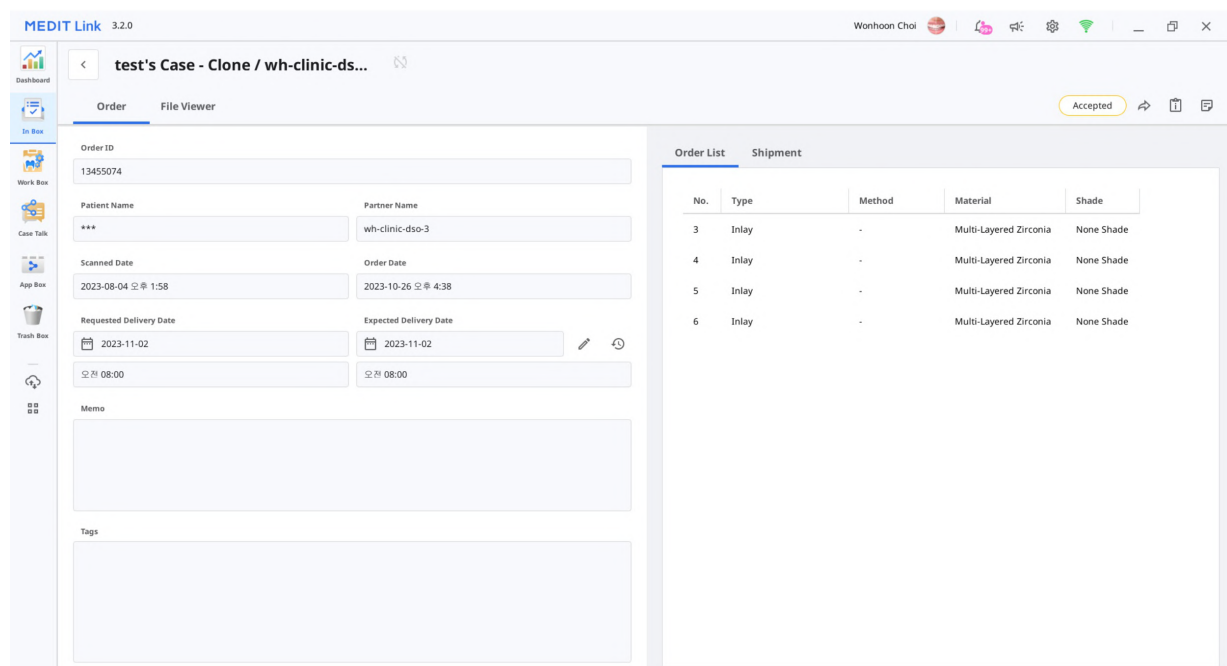

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The top bar includes the user name 'Wonhoon Choi' and various system icons. The main content area is divided into two sections: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' section displays details for 'test's Case - Clone / wh-clinic-ds...' with fields for Order ID (13455074), Patient Name (***), Partner Name (wh-clinic-dso-3), Scanned Date (2023-08-04 08:15:58), Order Date (2023-10-26 04:38), Requested Delivery Date (2023-11-02 08:00), and Expected Delivery Date (2023-11-02 08:00). The 'File Viewer' section shows a list of orders with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The list contains four entries, all of which are 'Inlay' type, 'Multi-Layered Zirconia' material, and 'None Shade'.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Order info	De volgende informatie kan in de order worden opgenomen: order-ID/patiëntnaam/accountnaam/scandatum/orderdatum/uiterlijke bezorgdatum/memo. U kunt de details van het bestelde product en de bezorginformatie bekijken.
Orderlijst	De orderlijst toont de details van het bestelde product.
Verzending	Voer de verzendinformatie in/controleer deze.

Verzendinformatie invoeren (In Box)

Voer de verzendinformatie van het voltooide dossier in en begin met de verzending.

1. Klik op het tabblad "Verzending".
2. Voer de verzendinformatie in en klik op "Registreren".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. De ingevoerde informatie wordt naar uw partner gestuurd.

Bezorgdatum beheren

U kunt de verwachte bezorgdatum instellen wanneer u een order plaatst. Deze informatie wordt doorgegeven aan uw partner.

De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)

- Wanneer u uit de Case Box bestelt, kunt u de gewenste bezorgdatum invoeren.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- De standaardwaarde is 7 dagen na de besteldatum.
- Voer de datum/tijd in waarop u de producten wilt ontvangen en ga verder met bestellen.
- U kunt de tijd eenvoudig instellen met behulp van de schuifbalk.

De verwachte bezorgdatum instellen (Laboratorium-account)

- U kunt de verwachte bezorgdatum voor het bij In Box bestelde dossier invoeren.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0


1. Controleer de aangevraagde bezorgdatum bij de partner en wijzig de planning met de knop "Wijzigen".



2. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid.

Indien nodig kunt u ook een opmerking achterlaten.

3. Klik op "Toepassen".

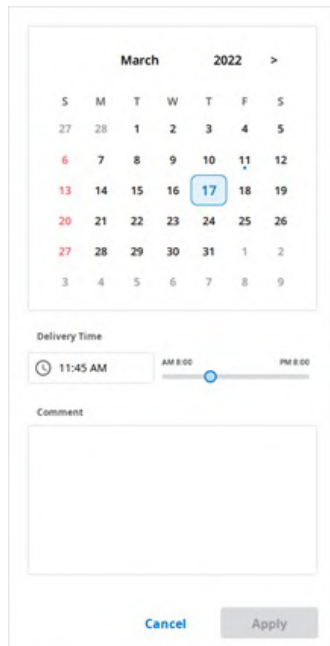

The screenshot shows a mobile application interface for selecting a delivery date and time. At the top, a calendar for March 2022 is displayed, with the date 17 highlighted in blue. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time picker set to 11:45 AM. A horizontal slider below the time picker allows selection between AM 8:00 and PM 8:00. Underneath is a 'Comment' section with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. De verwachte bezorgdatum en de notitie worden samen met de order verzonden.
 - U kunt de datum en notities bekijken in de Order Box.
 - U kunt de verwachte bezorgdatum wijzigen, waarna de wijzigingen worden doorgegeven aan uw partner.
5. Met de "Geschiedenis"-knop kunt u de geschiedenis van het dossier bekijken.



Dossier voltooien

Voltooien (Work Box/In Box)


Zodra alle taken zijn uitgevoerd, klikt u op "Gereed" om het dossier af te ronden.

Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails

U vindt het pictogram met de drie puntjes rechts van de knop "Openen" of "Opnieuw scannen".




Voltooi het werk door op het pictogram te klikken en "Done" te selecteren.

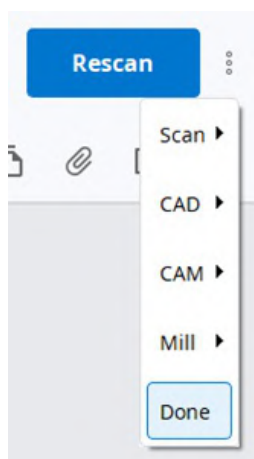

Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst

1. Ga naar Work Box.
2. Selecteer alle dossiers om te voltooien.

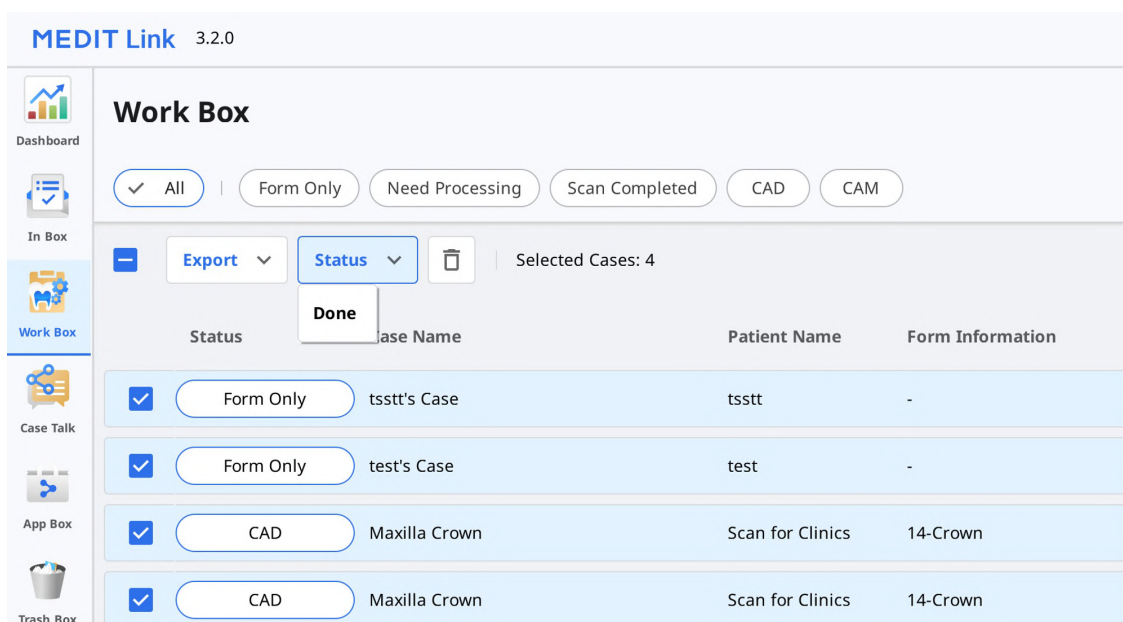


3. Klik op "Status" en selecteer "Done".

Voltooien (Case Box/Order Box)

Nadat het dossier in het laboratorium is voltooid, moet de praktijk het dossier bevestigen om het bestelproces te voltooien.

De praktijk kan de knop "Ontvangst bevestigen" in de Order Box vinden zodra het laboratorium het werk heeft afgerond.

Als u hierop klikt, wordt het hele orderproces voltooid en wordt de status van het dossier gewijzigd in "Case Completed".

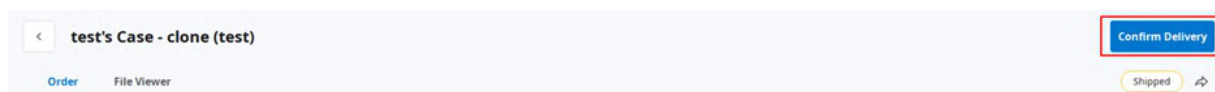

Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box

Voor dossiers die niet naar het lab zijn besteld, kunt u deze dossiers voltooien vanuit de Case Box.

1. Ga naar de Case Box.
2. Selecteer het dossier dat u wilt voltooien.

The screenshot shows the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box (highlighted), Order Box, Case Talk, and App Box. The main area has a title 'Case Box' and a 'Patient' dropdown menu. Below this are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Cas'. A toolbar contains an 'Export' button, a 'Status' dropdown menu (open), and a trash icon. The 'Status' dropdown shows 'Case Completed' as the selected option. Below the toolbar, a table lists cases with columns for checkboxes, status, case name, and case ID. The table shows 4 cases, with the first one being 'Ordered' and the others 'Scan Completed'.

	Status	Case Name	
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. Klik op "Status" en selecteer "Case Completed".

Communiceren met behulp van tags

U kunt extra informatie aan uw dossier toevoegen door gebruik te maken van tags en deze delen met uw partners.

Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier

U kunt tags invoeren wanneer u een nieuw dossier aanmaakt of dossierinformatie bewerkt.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname x

Specialmaterial x

SpecialComment x

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

U kunt de tags die u eerder hebt gebruikt gemakkelijk opzoeken en selecteren.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Voeg tags toe bij het bestellen

U kunt tijdens het bestellen tags controleren en bewerken in het ordervenster.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Controleer tags voor dossierdetails

