

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

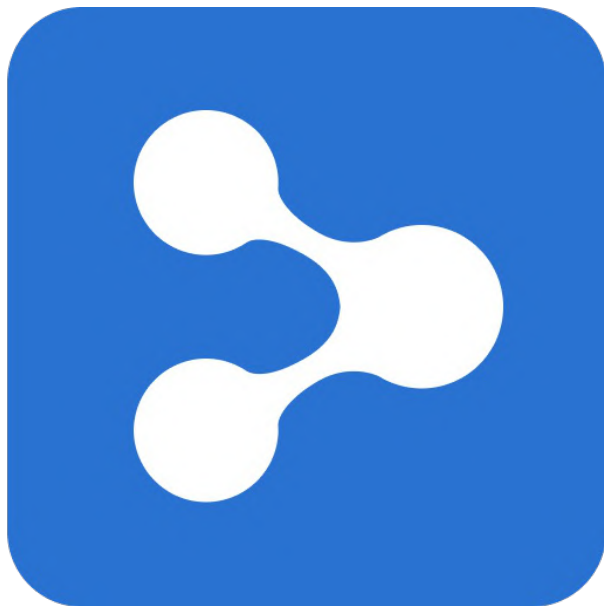


Table of Contents

Medit Link

Úvod	7
Medit Link	7
Přehled služeb	7
Služba Cloud	8
Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému	9

Medit Link > Instalace

Systémové požadavky	10
Systémové požadavky pro Windows	10
Systémové požadavky pro macOS	10
Systémové požadavky pro webovou službu	10
Doporučené pro prohlížeče	10
Minimum pro mobilní zařízení	10
Instalace na Windows	11
Instalace na macOS	14

Medit Link > Začínáme

Registrovat se a Přihlásit se	18
Medit Link Webstránka	18
Registrovat se	18
Přihlašovací a uvítací stránka	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Náhled Dashboardu	24
Medit Insights	24
Přihlásit se na odběr Medit Insights	25
Odhlásit se z odběru Medit Insights	26
Patient	27
Vyhledat podle pacienta	27
Case Box/Work Box	28
Filtrování případu	28
Filtrovat podle pacienta	28
Filtrovat podle stavu	31
Filtrovat podle trvání	31
Filtrovat podle vyhledávání	32
Detaily případu	32
Order Box/In Box	34
Detaily objednávky	34
Zázločky v Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Vytvoření Case Talk	35
Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení	36
Detaily Case Talk	38
Web Viewer	39
Anotace	40
Komentáře	41

Sdílení obrazovky v reálném čase	42
Datový strom	42
Ovládání datového stromu	42
3D ovládání modelu	43
Partners	45
Vyhledávání Partnerů	45
Můj seznam partnerů	45
Pozvání partnera	46
Membership	47
Členství	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Cloud úložiště	49
Přihlásit se k odběru	49
Zrušit předplatné	51
Moje předplatné	52
Detaily	53
Přihlásit se znovu k odběru	53
Jak přidat platební metodu	54
Jak změnit platební metodu	55
Uplatnění	55
Detaily	56
Registrovat kód kupónu	56
Aktivovat kód kupónu	57
Detaily platby	57
Zobrazit detaily faktury	58
My Info	60
Můj účet	60
Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)	60
Můj skener	61
Jiné Menu	63
Oznámení & Aktualizace	63
Související webstránky	63
Stáhnout aplikaci Medit Link	64
 Medit Link > Aplikace Medit Link	
Náhled	65
Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.	65
Lišta záhlaví	66
Moje informace	66
Upozornění	66
Upozornění a aktualizace	67
Nastavení	67
Stav sítě	68
Nastavení	70
Obecné	70
Správce úložiště	71
Nastavit období	72
Místní úložiště	72
Cloud úložiště	72
Nastavit propojený program	73
Možnosti exportu	73
Nástroj pro převod případů	75

Exportovat případ	76
Importovat případ	77
Proxy možnosti	79
O programu	79
Uživatelská příručka	80
Menu	81
Dashboard	81
Patient	81
Přidat nového pacienta	82
Odstranit pacienta	82
Spojit pacienty	83
Case Box/Work Box	83
Záložky v Case Box/Work Box	84
Funkce v Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Záložky v Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Vše	87
Medit Apps	87
Staženo	88
Trash Box	88
Správce synchronizace případů	89
Nahrát	89
Stáhnout	90
Související webstránky	90
Prohlížeč souboru	92
Datový strom	92
Nástroje pro ovládání modelu	92
3D ovládání modelu	92
Ovládání 2D obrázků	94
Funkční nástroje	94
Zachycení obrázku a Poznámka	94
Ortho zachycení	95
Vyplnit mezery	96
Ořezávání	97
Optimalizovat zarovnání okluze	100
Pohyb mandibuly	102
Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů	102
Jak spravovat více výsledků	102
Možnosti zobrazení	104
Filtry stavu	104
Typ zobrazení	105
Seskupení	105
Seřazení	105
Filtrování a vyhledávání	107
Filtrovat podle pacienta	107
Filtrovat podle data	108
Rozšířené možnosti vyhledávání	109
Medit Link > Pracovní postup	
Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ	110

Vytváření případů	110
Vytvořte případy v Case Box (Klinika)	110
Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)	111
Úprava případů	111
Upravit případy v Case Box (Klinika)	111
Upravit případy v Work Box (Laboratoř)	112
Klonování případů	113
Klonování případu v Case Box (Klinika)	113
Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)	113
Odstranění případu	114
Smazat případ (Klinika a Laboratoř)	114
Informace formy	115
Registrace informací formy v Case Box	115
Zadejte je na záložce Formy	115
Registrace informací formy v Work Box	115
Zadejte je na záložce Formy	115
Připojení zubů do můstku	115
Nastavení možností skenování	116
Medit Scan for Labs	116
Obecné možnosti	116
Možnosti podle zubů	116
Přidání k Oblíbeným	117
Přidat do Oblíbených	117
Spravujte oblíbené šablony	117
Práce na skenování/CAD	118
Proces skenování	118
Proces CAD	118
Použití doplňkových aplikací	118
Přidání Rychlého spouštění	118
Správa spouštění aplikací	118
Rychlé spouštění	119
Všechny aplikace	119
Získání souborů s výsledky	120
Export souborů s výsledky skenování	120
Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů	121
Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru	123
Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu	125
Exportovat Seznam případů jako CSV	128
Export hranice preparace	129
Exportovat hranici preparace jako barvu	129
Exportovat hranici preparace jako soubor	130
Stáhnout soubory z webstránky Medit Link	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Objednávka/Správa objednávek	134
Objednávání případů	134
Potvrdit objednávku (In Box)	135
Zrušit objednávku (Order Box)	135
Odmítnout objednávku (In Box)	135
Kontrola objednaných případů	135
Zadání informací o doručení (In Box)	136
Správa data doručení	136

Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)	136
Nastavit očekávané datum doručení (Účet laboratoře)	137
Dokončování případu	138
Dokončit (Work Box/In Box)	138
Dokončete případ z detailu případu	138
Dokončit více případů ze seznamu případů	139
Dokončit (Case Box/Order Box)	139
Dokončete neobjednaný případ v Case Box	139
Komunikujte pomocí značek	141
Přidejte značky při vytváření nového případu	141
Přidejte značky při objednávce	142
Zkontrolujte značky na detailech případu	142

Úvod

Medit Link

Medit Link je nástroj pro spolupráci navržený tak, aby usnadnil komunikaci mezi klinikami a laboratořemi a zajistil tak optimalizovaný pracovní postup pro každou stranu.

Nabízí diferencované funkce podle typu a oprávnění každého účtu. Program poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu pracovního postupu - od skenování orálními a modelovými skenery, objednávání případu až po navrhování a výrobu protéz.

Medit Link se skládá z webové služby a počítačové aplikace.

Přehled služeb

		Web	Aplikace
		• Zaregistrujte se a spravujte účet • Vyhledávejte a spravujte partnery • Sdílejte případy prostřednictvím Web Viewer s odkazem ke sdílení • Přístup k případům vytvořeným z aplikace • Spravujte objednávky	• Vložte informace formy • Skenovat • Spravujte objednávky • Propojte s CAD • Spravujte pacienty
Klinika	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši kliniku a sdílejte případy. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte, zadávejte objednávky a spravujte pacienty. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Člen	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratoř	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši laboratoř a sdílejte případy. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte a spravujte objednávky. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Člen	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Služba Cloud

Medit Link podporuje automatické nahrávání/stahování databází a souborů prostřednictvím AWS (Amazon Web Services).

Data uložena v cloudu jsou automaticky synchronizována s počítači mnoha uživatelů v organizaci s tím, že může existovat přístup k těm samým datům z jednoho počítače kdykoliv. Cloudové zálohování a obnova uchová všechna vaše data v bezpečí. Uchová vaše data v bezpečí i v případě ztráty dat v důsledku náhlého selhání počítače.

Cloudová služba umožňuje partnerským zubařům a laboratořím rychle sdílet data, aniž by se museli zatěžovat e-mailem nebo manuálním přenosem skenů. Všechna data, včetně informací o pacientech, jsou bezpečně šifrována, ukládána a přenášena. Medit dodržuje lékařské zákony a předpisy, jako je HIPAA a GDPR.

Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému

Medit Link nabízí vlastní objednávkový systém.

- Medit Link umožňuje uživatelům navazovat partnerství mezi zubními lékaři a dentálními laboratořemi a zároveň rychle a snadno sdílet data.
- Můžete kontrolovat a spravovat stav objednávky.

Systémové požadavky

Poznámka

Chcete-li se skenerem používat skenovací software, přečtěte si prosím systémové požadavky pro Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.

Systémové požadavky pro Windows

	Notebook & Stolní počítač
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz nebo vyšší
RAM	16 GB nebo více
Grafika	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) nebo vyšší / nebo ekvivalentní AMD video karta
OS	Windows 10 64 Bit (nedostupný v 32 Bit) nebo vyšší

Systémové požadavky pro macOS

	Mac
Procesor	M1 s 8-jádry, 7-jádrovým GPU a 16-jádrovým Neural Engine
RAM	16 GB nebo více
OS	Monterey 12 nebo vyšší

Systémové požadavky pro webovou službu

Doporučené pro prohlížeče

	Prohlížeče
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pro mobilní zařízení

	Android	iOS
Zařízení	Ekvivalent Galaxy S7 nebo vyšší	Ekvivalent iPhone 7 nebo vyšší
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB nebo více	2 GB nebo více
AP	Vyšší než Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalace na Windows

Medit Link je nainstalován jako balíček s programy pro získávání skenů - Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.


1. Spusťte Medit_LinkSetup.exe.
2. Vyberte jazyk instalace.
3. Vyberte složku pro instalaci Medit Link. Přečtěte si prosím licenční podmínky, odsouhlaste je a klikněte na „INSTALOVAT“.

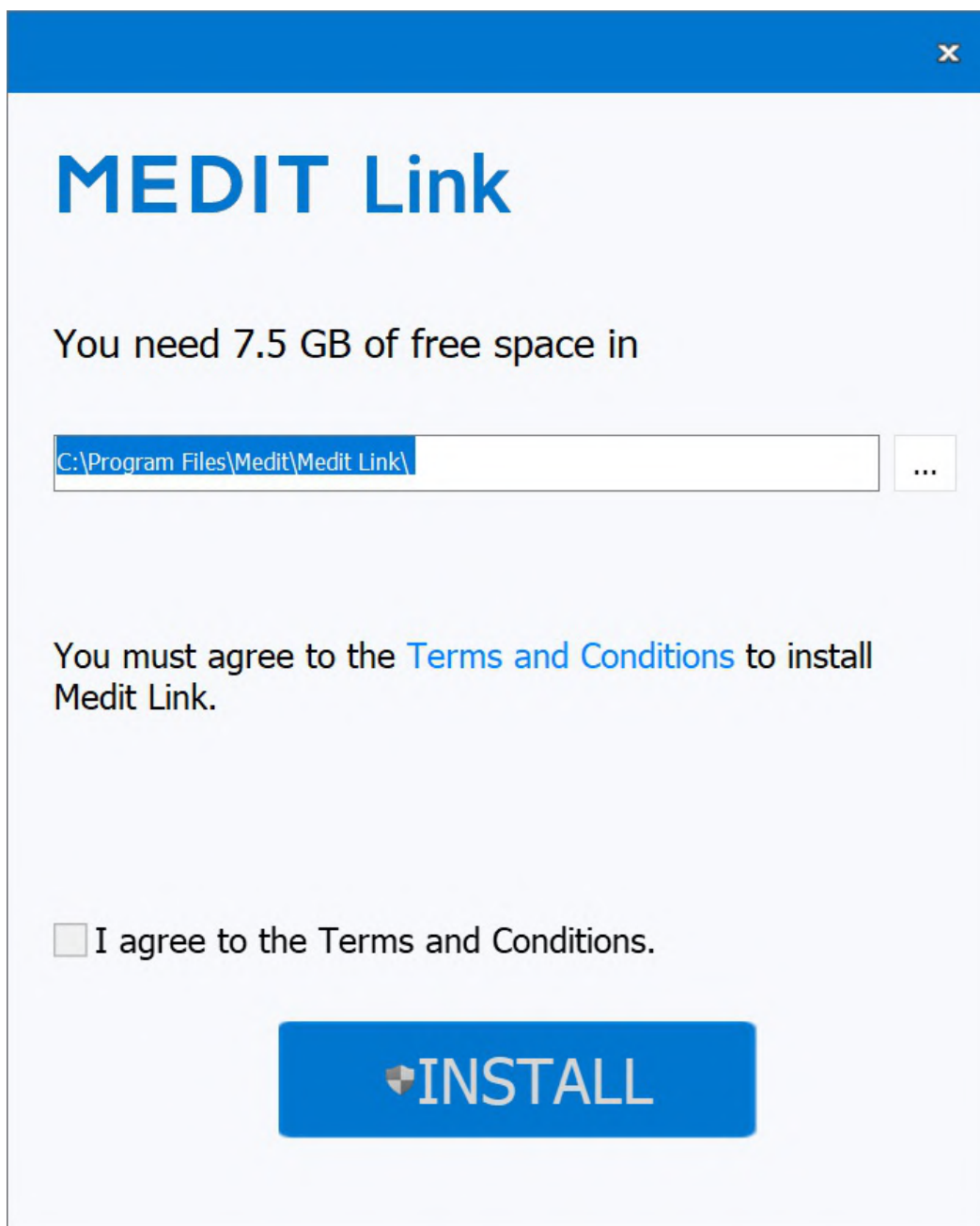

4. Před pokračováním k dalšímu kroku se ujistěte, že je kabel skeneru odpojen od počítače. Instalace nemusí pokračovat, pokud je skener připojen k počítači.
5. Program se nainstaluje automaticky a může to trvat několik minut. Nevypínejte ani neodpojujte počítač, dokud nebude instalace dokončena.

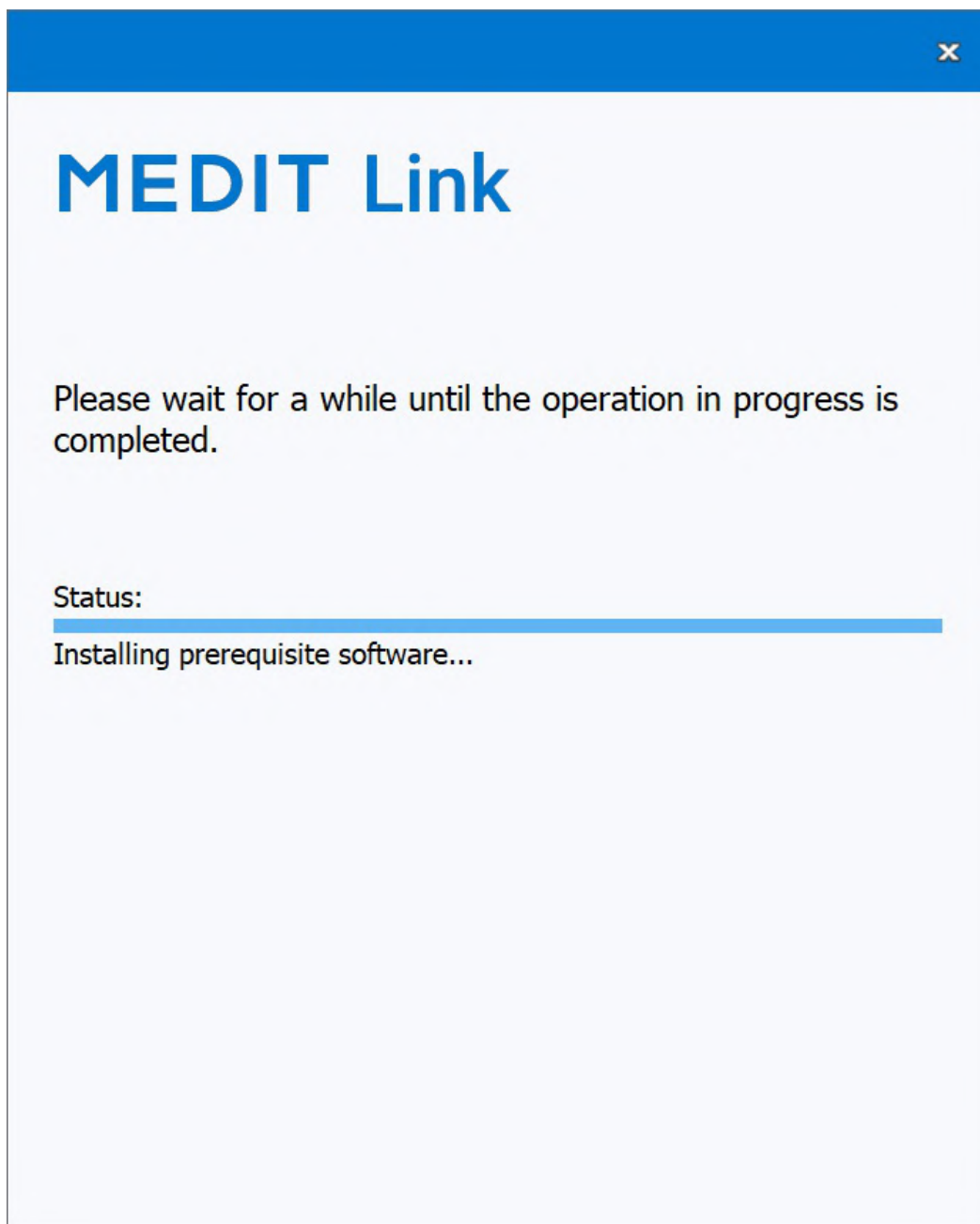

6. Po dokončení instalace restartujte počítač, prosím. Pokud skener nemáte, můžete pokračovat dále také bez restartování počítače.

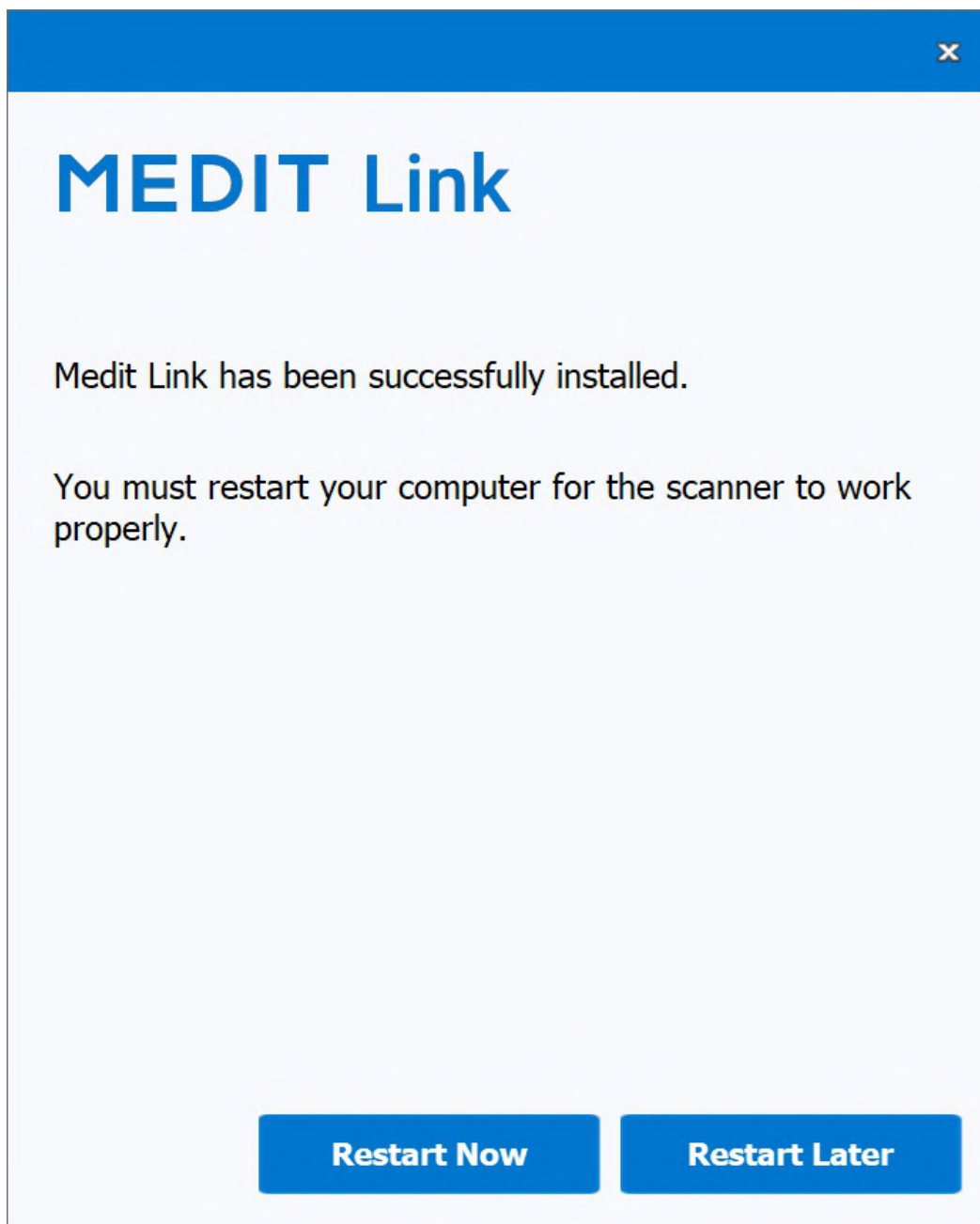


 Poznámka

Pokud po dokončení instalace nerestartujete počítač, skener nemusí fungovat správně.


Instalace na macOS

Medit Link je nainstalován jako balíček s Medit Scan for Clinics.


1. Spustíte Medit_Link_x.x.x.pkg a kliknete na „Pokračovat“.

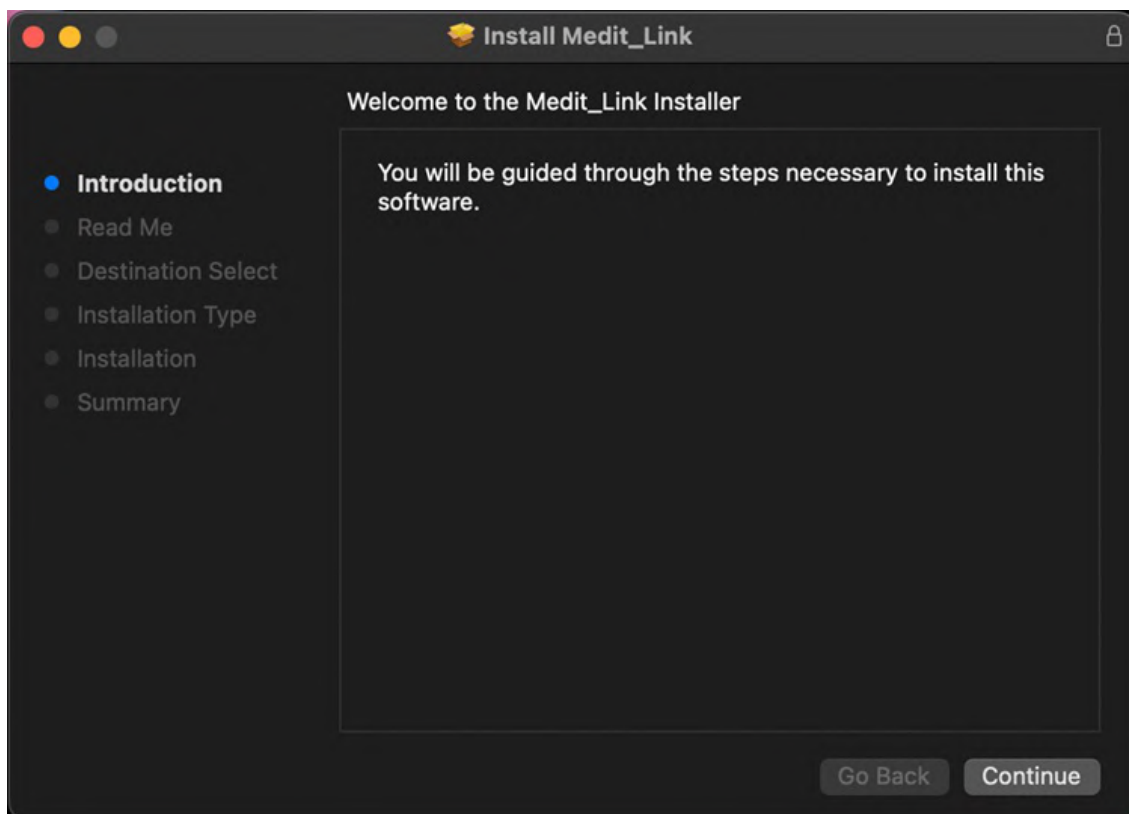


2. Přečtete si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem a kliknete na „Pokračovat“.

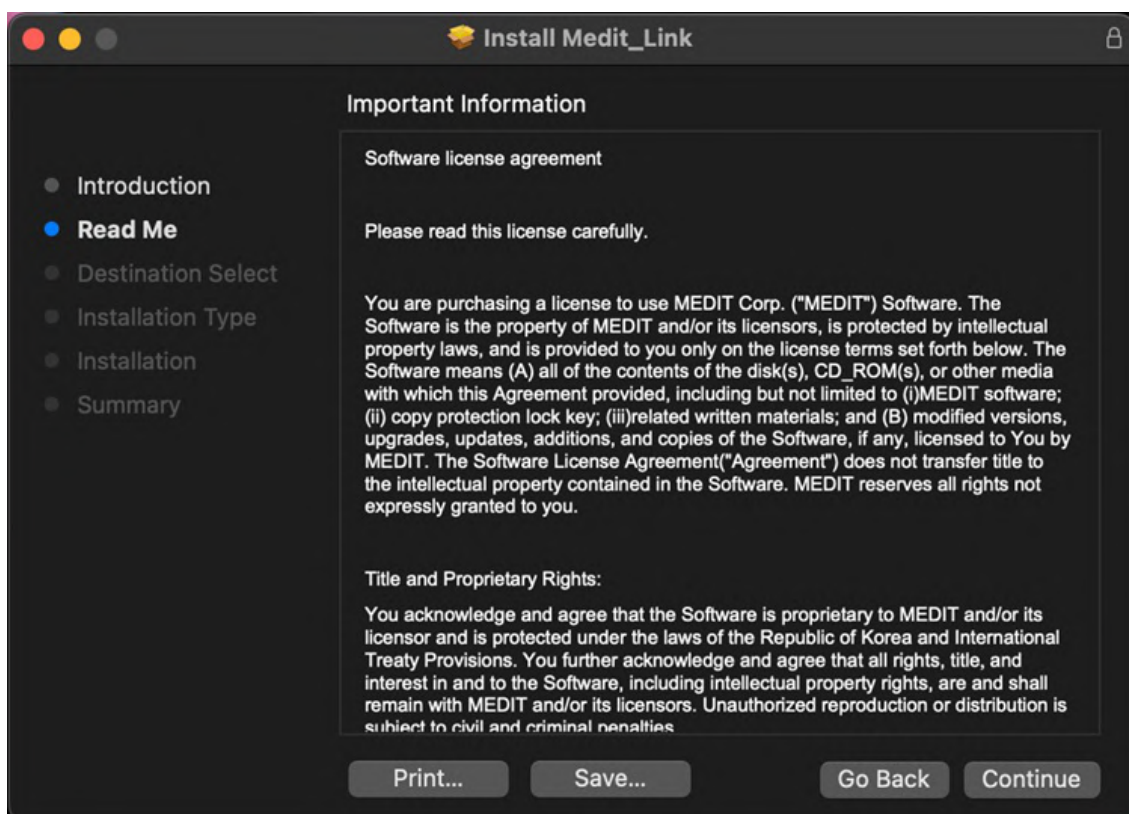

3. Vyberte disk, který chcete nainstalovat a klikněte na „Pokračovat“.

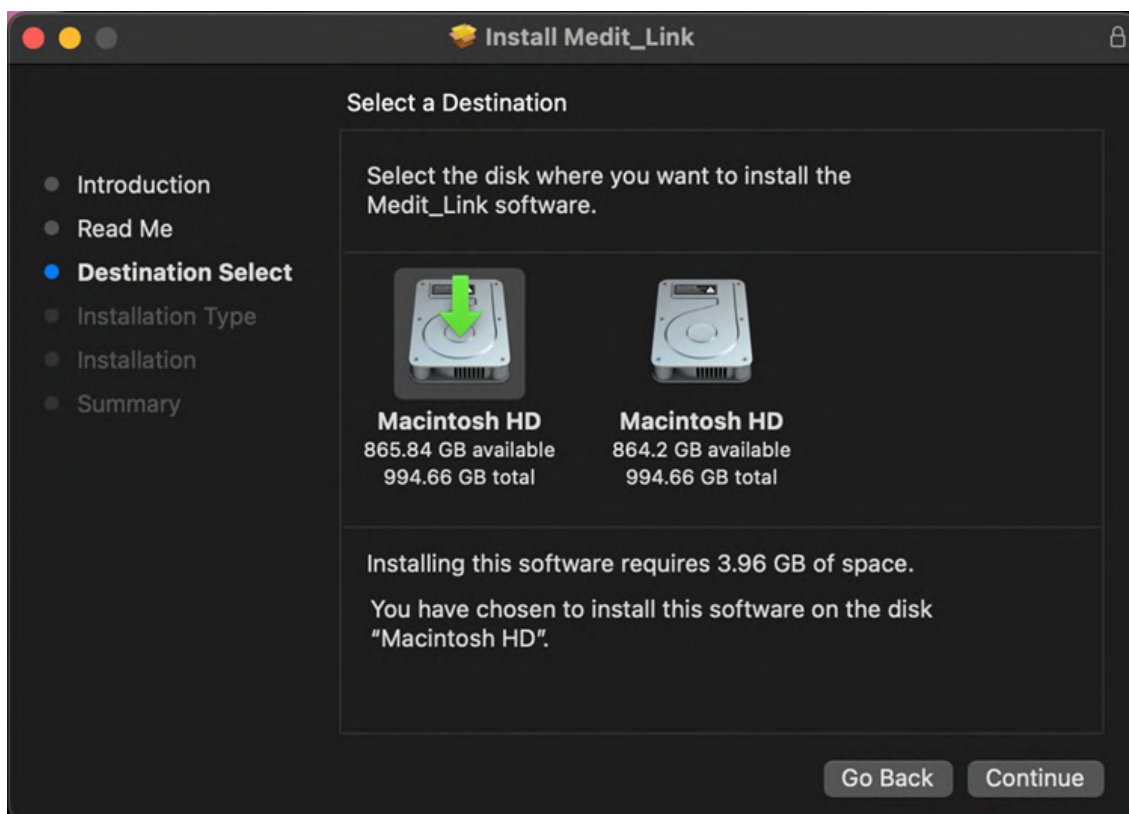


4. Chcete-li změnit lokalitu instalace, klikněte na „Změnit lokalitu instalace...“.

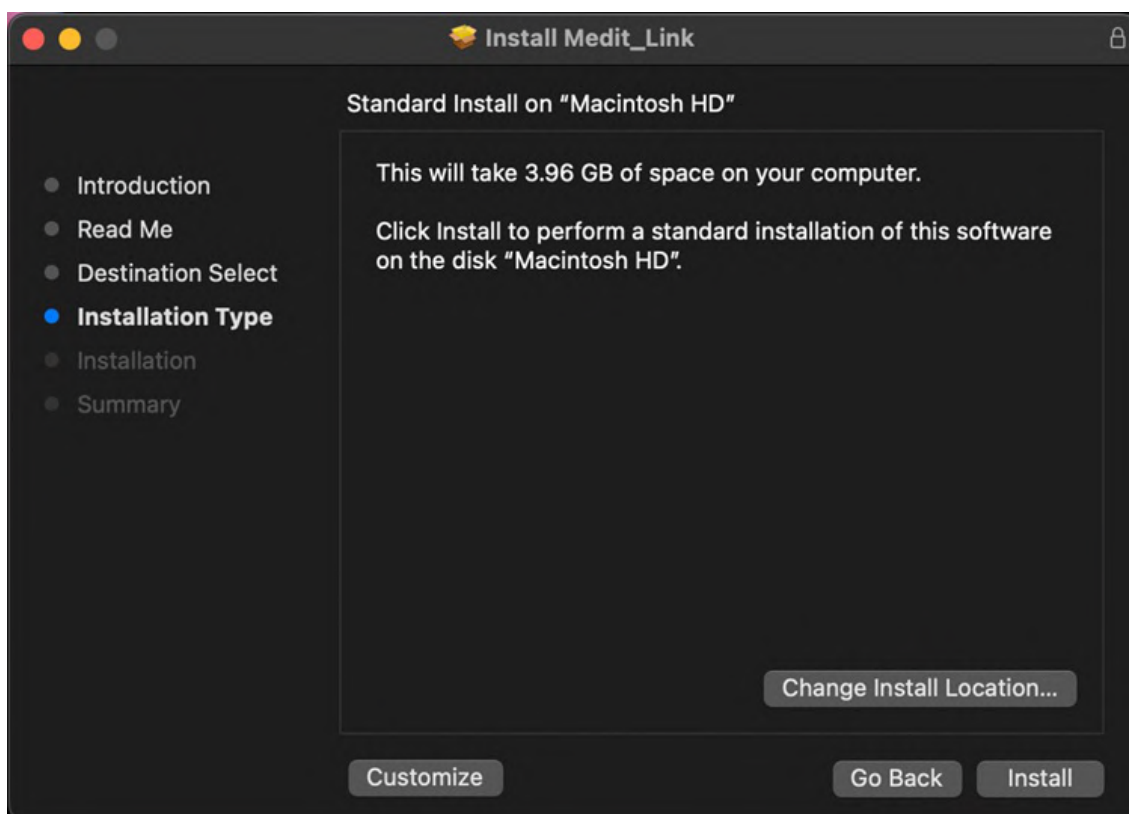


5. Klikněte na „Instalovat“ a zadejte heslo pro Mac pro povolení instalace, pokud o to budete požádáni.



6. Počkejte na dokončení instalace.

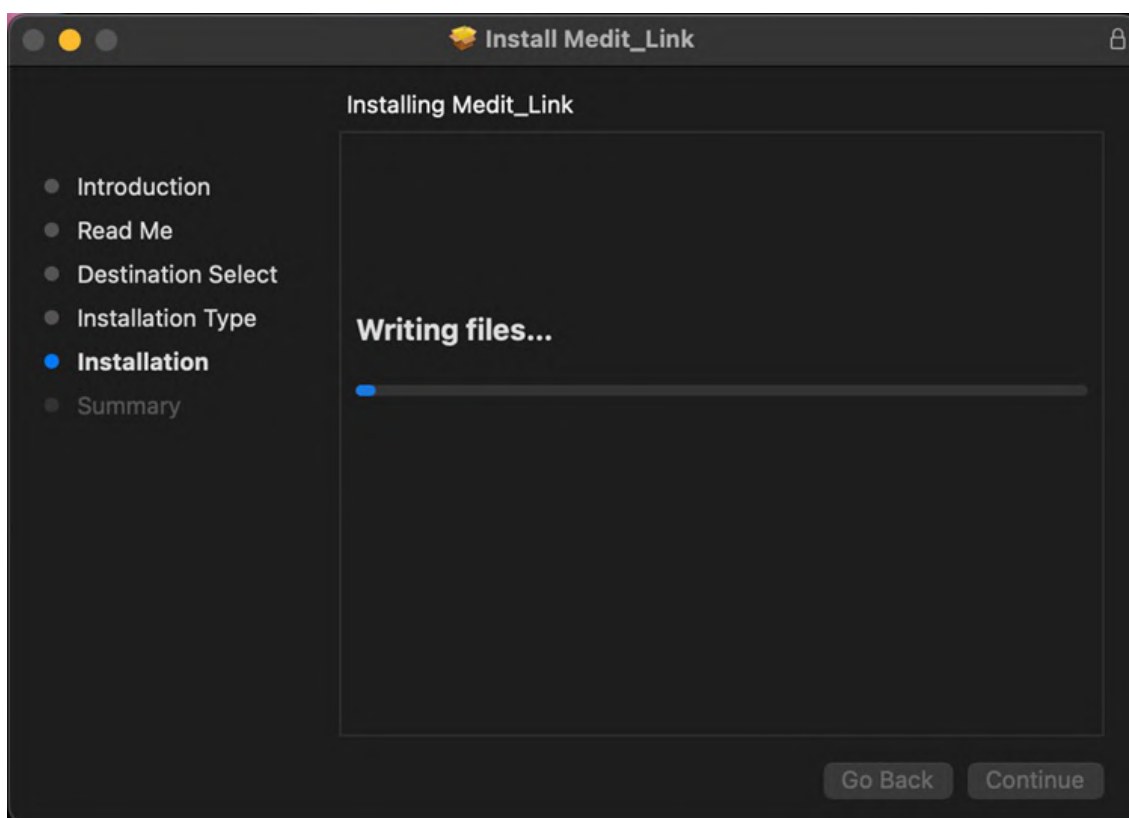


7. Kliknutím na „Zavřít“ okno instalace zavřete.

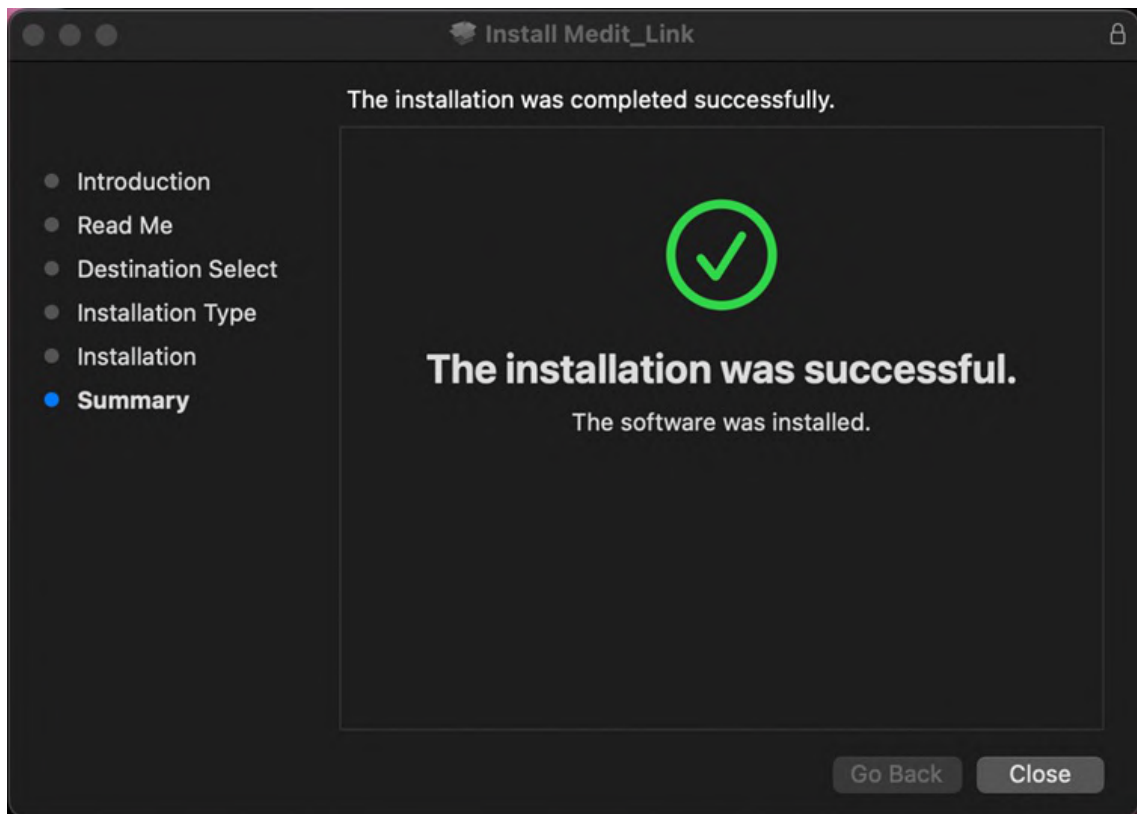

Registrovat se a Přihlásit se

Medit Link Webstránka

Zaregistrujte se ke službě Medit Link na www.meditlink.com.

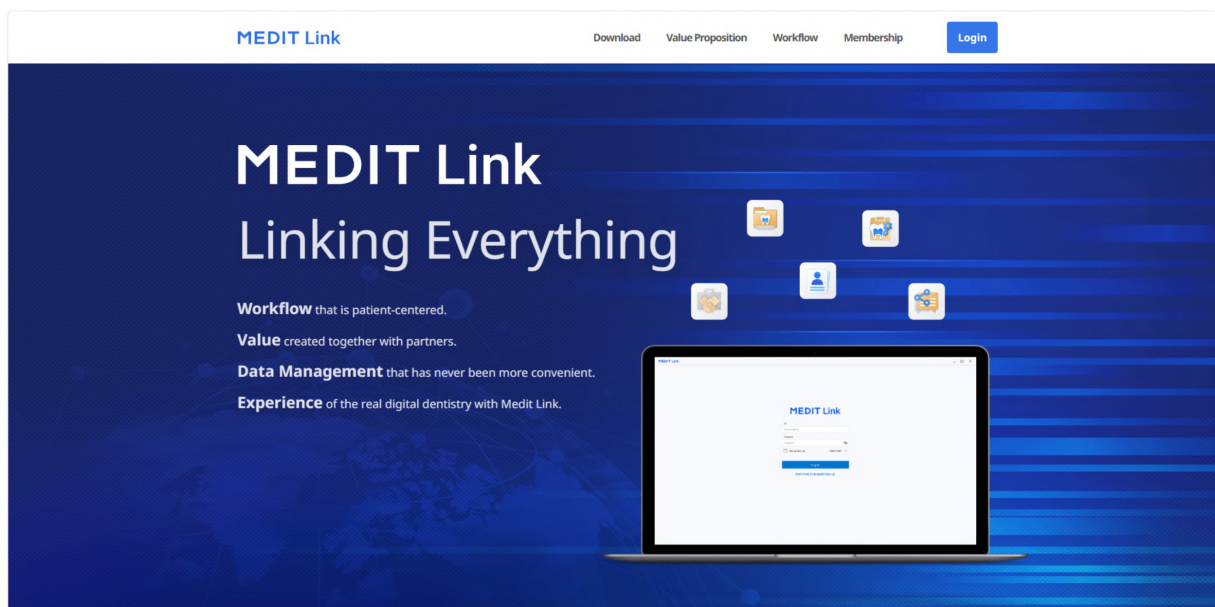

Poznámka

Zaregistrujte se do Medit Link China na www.meditlink.cn.

Registrovat se

Pro použití služby Medit Link si musíte zaregistrovat účet. Po vytvoření účtu jako klinika nebo laboratoř můžete využívat funkce poskytované v Medit Link.

Uživatelé si mohou vybrat jeden z následujících čtyř typů účtu pro registraci členství a službu je tak možné používat s úplnými nebo omezenými funkcemi a oprávněními, v závislosti na typu účtu.

- Klinika - Admin
- Klinika - Člen
- Laboratoř - Admin
- Laboratoř - Člen

Administrátor je obvykle zástupcem vaší organizace a bude mít plný přístup ke všem funkcím a službám Medit Link. Naproti tomu členský účet má omezený přístup.

Chcete-li se zaregistrovat k členství, postupujte takto:

1. Klikněte „Nemáte ještě účet? Registrovat se“ na stránce přihlášení.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Po přečtení poskytnutých popisů klikněte na tlačítko „Registrovat“ u požadovaného typu účtu.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Zobrazí se následující registrační formulář.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. Zadejte název kliniky nebo laboratoře a poté v závislosti na požadovaném typu účtu proveďte následující:
 - Pokud se registrujete jako administrátor, klikněte na „Zkontrolovat dostupnost“ a zjistěte, zda je zadané jméno dostupné.
 - Pokud se registrujete jako člen, klikněte na „Hledat.“ Administrátor musí vaši organizaci zaregistrovat dříve, než se zaregistrujete.
5. Vyplňte zbytek registračního formuláře a klikněte na „Registrovat“.

Poznámka

Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových informací během registrace, budete od společnosti Medit dostávat užitečné informace o produktech a službách.

6. Bude vám zaslán ověřovací e-mail.
7. Chcete-li dokončit proces registrace, ověřte vaši e-mailovou adresu pomocí obdrženého odkazu.

Přihlašovací a uvítací stránka

1. Na přihlašovací stránce zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlásit se“.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Pokud jste nevyplnili informace o podniku, zobrazí se následující vyskakovací okno.

Welcome, stage-test-wh!

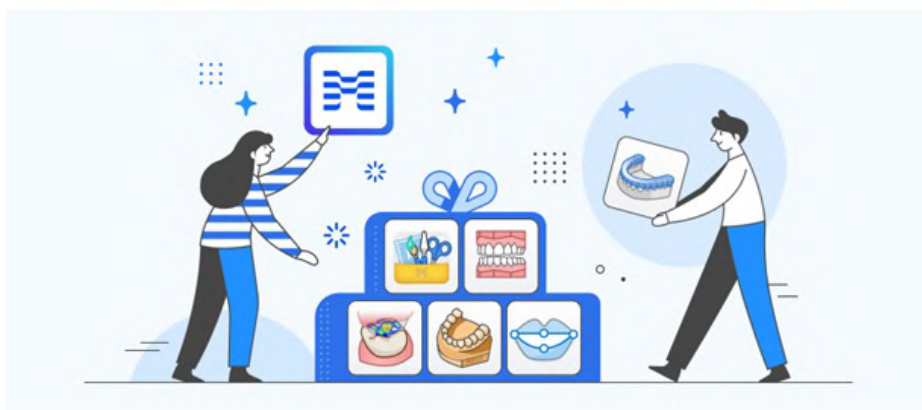

1 2 3 4

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Poznámka


Chcete-li používat služby Medit Link, je třeba zadat informace o vaší klinice nebo laboratoři využitím účtu administrátora.

3. Klikněte na tlačítko „Přejít do Moje klinika“ nebo „Přejít do Moje laboratoř“ a zadejte informace o klinice nebo laboratoři, včetně obchodního názvu, obrázků/loga, nabízených služeb, adresy kanceláře, čísla do kanceláře, atd.
4. Informace zadané na uvítací stránce lze kdykoli upravit na kartě My Info > Moje klinika nebo Moje laboratoř přímo na webstránce Medit Link.

Dashboard

Náhled Dashboardu

Statistiky veškeré odvedené práce na Medit Link si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách - jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

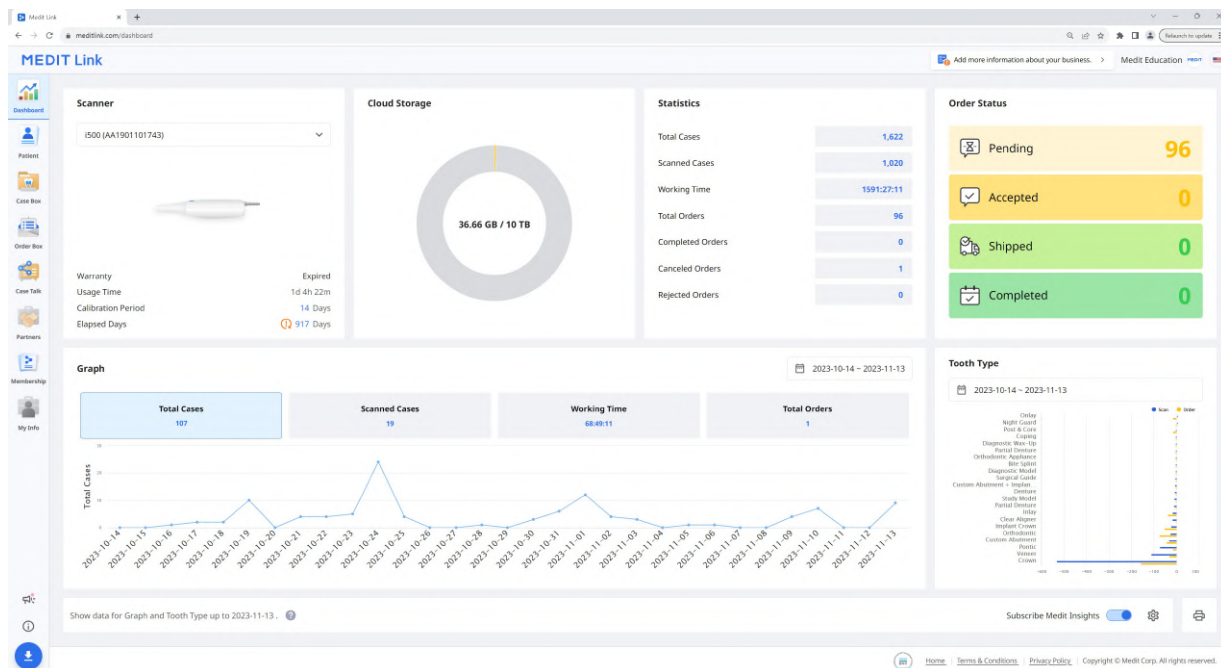

Grafy a tabulky na panelu Dashboard zobrazují statistiky pro celou práci, odvedenou v Medit Link.

Skener	Získáte informace o aktivních skenerech, včetně záruky, doby používání skeneru, intervalu kalibrace a uplynulé doby kalibrace.
Cloud úložiště	Zobrazí celkovou kapacitu cloudu a využívané procento.
Celková statistika	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu úlohy.
Stav objednávky	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu objednávky.
Graf	Graf informací o práci podle období.
Typ zubu	Poskytne statistiky počtu skenů a objednávek podle zadaných informací o léčbě.


Medit Insights

Medit Insights je služba reportingu, která vám pomáhá analyzovat statistiky používání.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Medit Insights

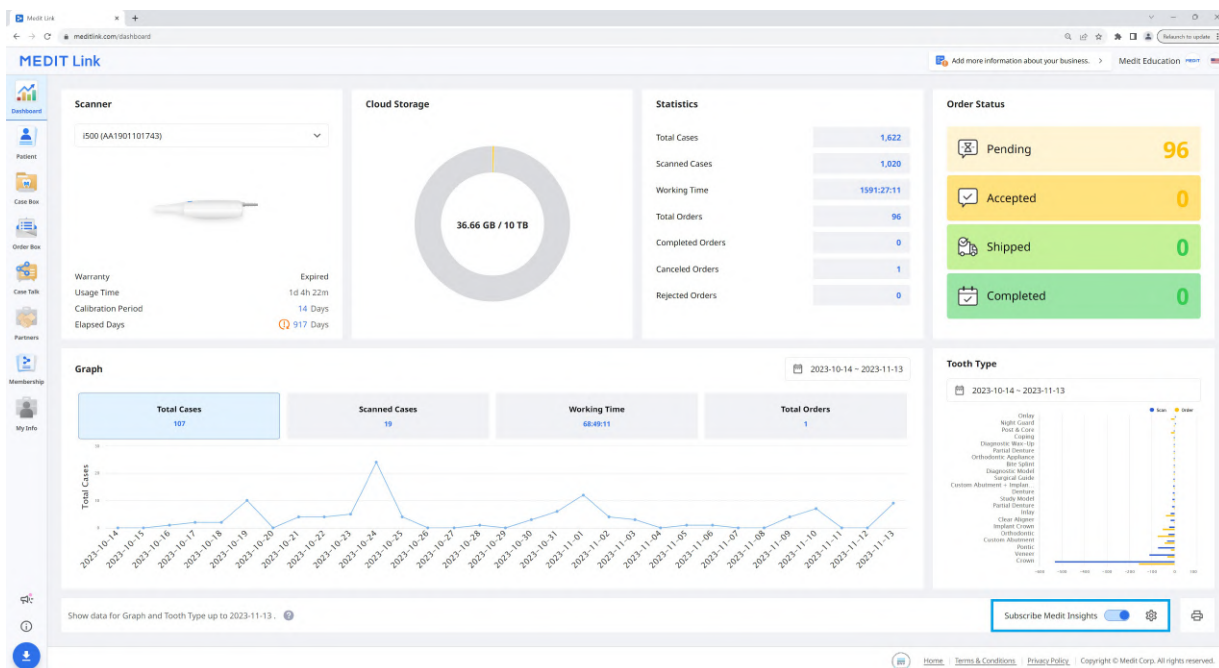

Přihlásit se na odběr Medit Insights

Každý druhý den v měsíci můžete obdržet e-mail s přehledem. Není vyžadován žádný další proces registrace. Stačí povolit „Přihlásit se k odběru Medit Insights“.

Pokud nepoužíváte e-mailovou adresu, kterou jste použili pro účet Medit Link, můžete si pro příjem Medit Insights nastavit jinou e-mailovou adresu.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Druhého dne každého měsíce obdržíte e-mail se statistikami, jak je uvedeno níže.

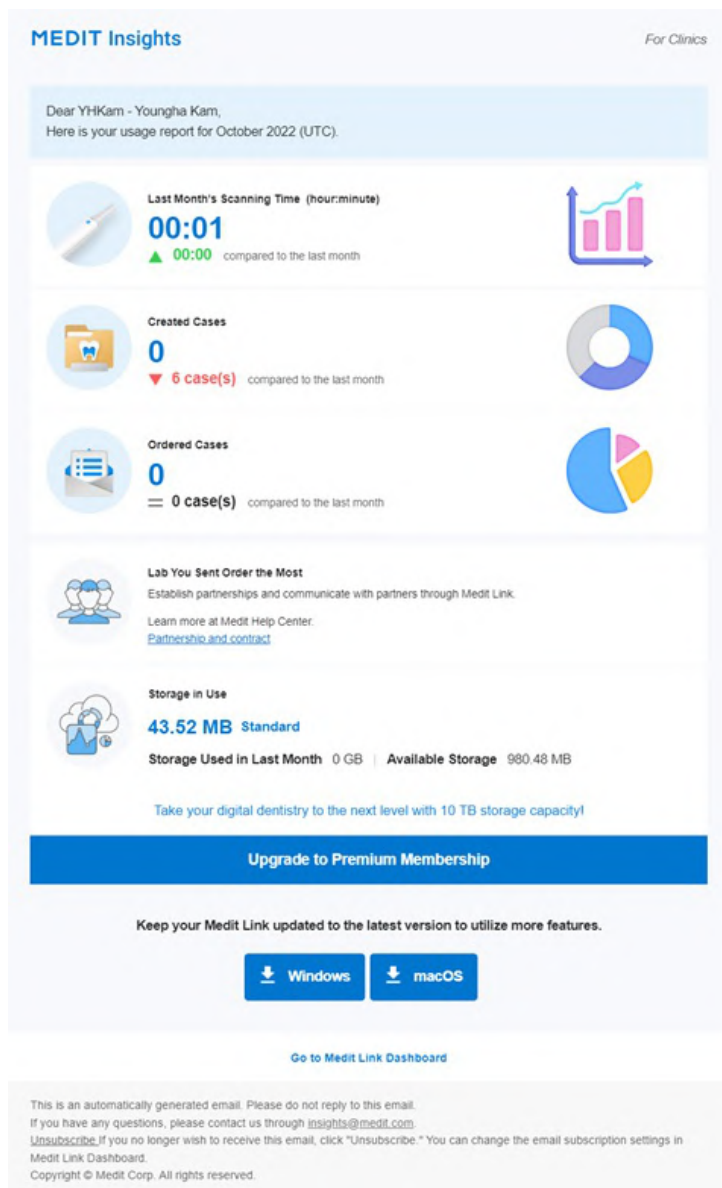

Banner	Medit zde poskytuje užitečné tipy a informace. * Pokud nechcete, aby se banner zobrazoval, zrušte zaškrtnutí políčka Marketingová a propagační smlouva v části Moje info > Můj účet.
Statistické informace	Zobrazí se statistické informace, jako je doba skenování, vytvořené případy, nejvíce objednávaná laboratoř, atd.
Stažení MEDIT Link	Tlačítko poskytuje odkaz ke stažení MEDIT Link.
Dashboard	Všechny statistické informace jsou založeny na informacích z vašeho Dashboardu. Další detaily můžete vidět v Dashboardu.

Odhlásit se z odběru MEDIT Insights

Deaktivujte „Přihlásit se k odběru MEDIT Insights“ na Dashboardu nebo klikněte na „Odhlásit se z odběru“ v přijatém e-mailu.

Patient

Případy můžete spravovat na základě jména pacienta a ID pacienta.

Všichni pacienti registrovaní prostřednictvím aplikace Medit Link se zobrazují v seznamu, což usnadňuje správu pacientů a jejich případů.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Vyhledat podle pacienta

1. Z rozevíracího menu v pravé horní části seznamu pacientů vyberte kritéria vyhledávání mezi Jméno pacienta nebo ID pacienta.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Zadejte jméno pacienta nebo ID pacienta pro vyhledávání podle zvolených vyhledávacích kritérií.
3. V seznamu jsou zobrazeni pouze pacienti se zadaným jménem nebo ID pacienta.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinika) nebo Work Box (Laboratoř) zobrazuje všechny případy, které uživatel vytvořil v aplikaci Medit Link. Je možné prohlížet soubory využitím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu.

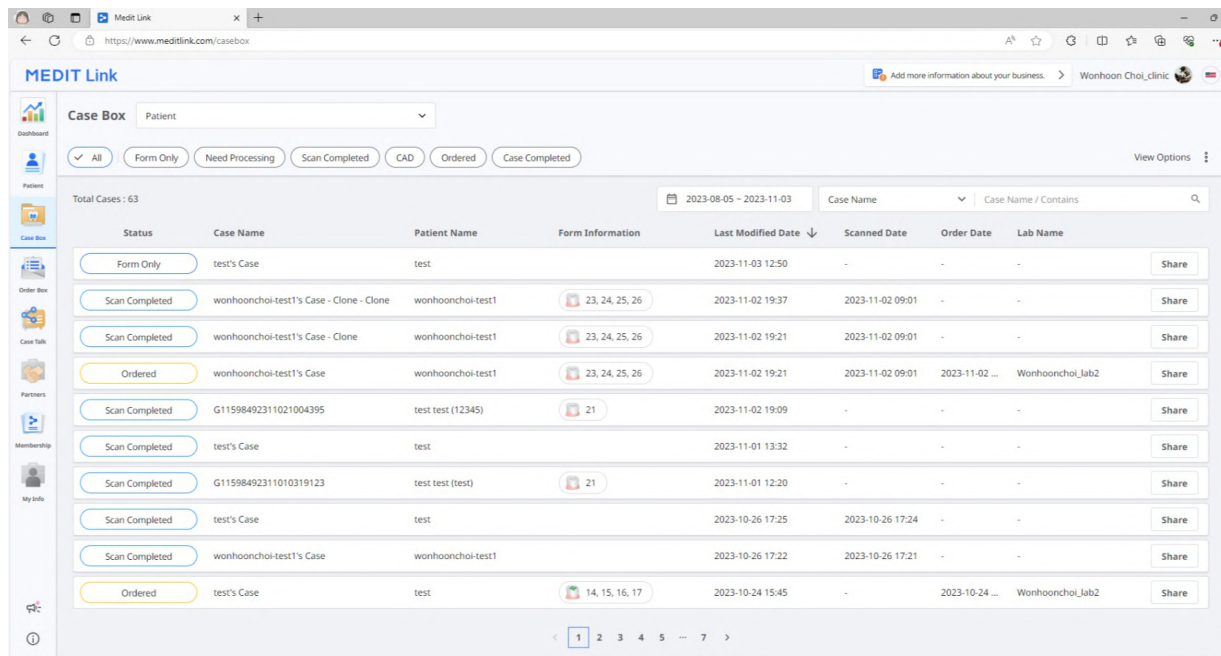


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area displays a list of cases. At the top of the list, there are filters: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filters, there's a table with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains several rows of case data. At the bottom of the table, there's a pagination bar showing '1' of 7 pages.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Filtrování případu

Filtrovat podle pacienta

Případy můžete filtrovat podle pacientů. Je to užitečné, když hledáte případy pro konkrétní pacienty.

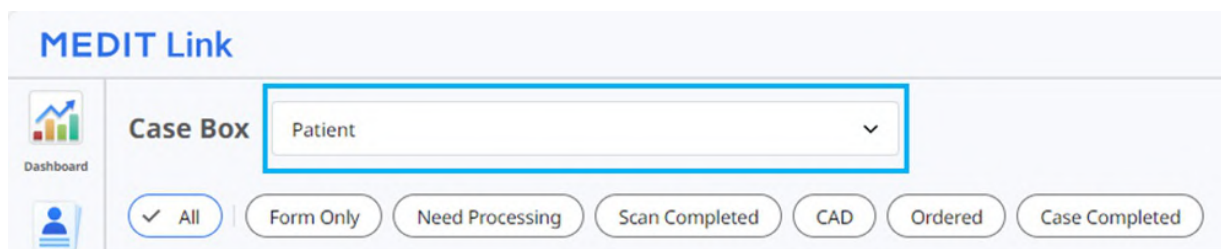

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' label is highlighted. Below it, there's a dropdown menu with the text 'Patient' and a downward arrow. Below the dropdown menu, there are several filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Do vyhledávacího pole zadejte jméno pacienta.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Vyberte pacienta ze seznamu výsledků vyhledávání.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. V seznamu se zobrazují pouze případy pro vybrané pacienty, což usnadňuje identifikaci případů, se kterými chcete pracovat.

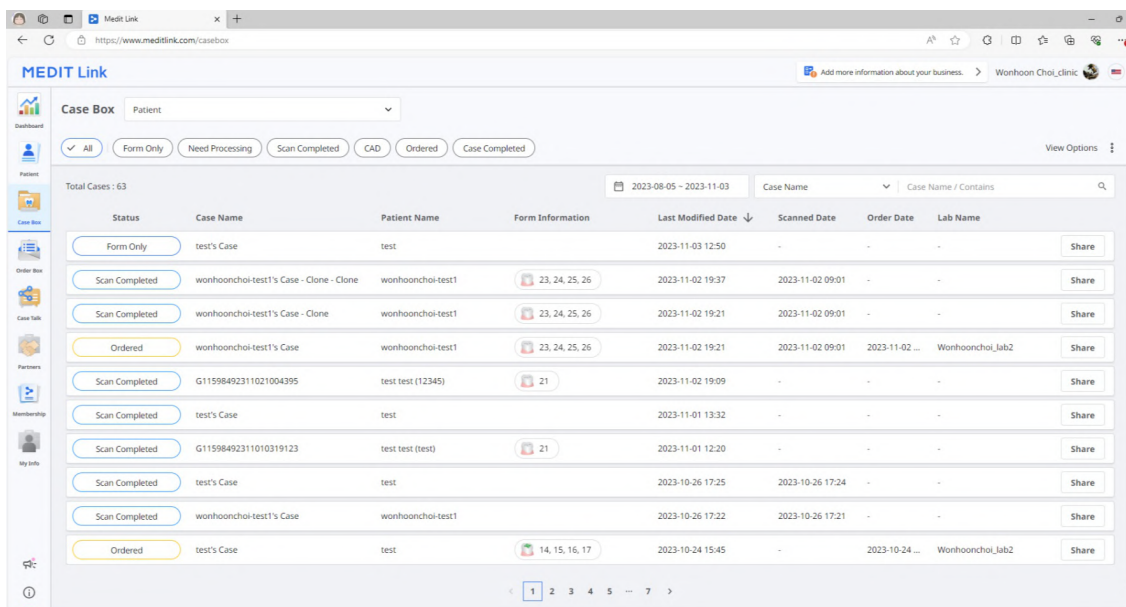

Filtrovat podle stavu

Případy můžete filtrovat na základě jejich stavu.

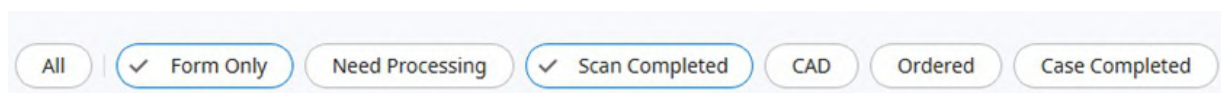

- Uživatel může kliknout na stav, který chce zobrazit. Prohlížeč zobrazí pouze případy se zvoleným stavem.
- Uživatel může vybrat také více stavů najednou.

Na základě typu účtu jsou k dispozici následující typy stavů:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratoř)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Filtrovat podle trvání

Můžete filtrovat a zobrazovat případy, které byly naposledy změněny během vámi nastaveného období.

1. Klikněte na filtr doby.



2. Zvolte rozsah.

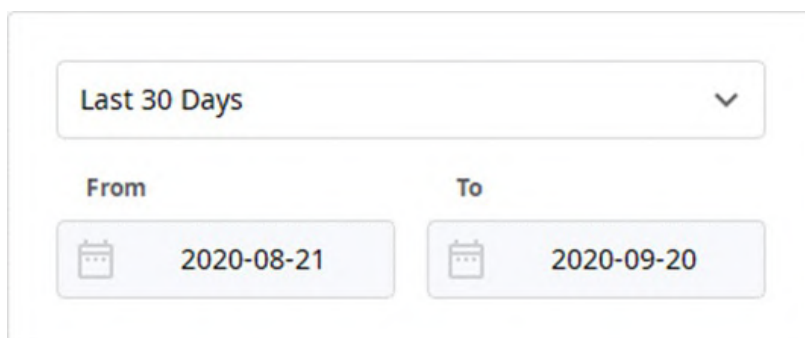

- Vše: Zobrazí všechny případy.

- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené se včerejším datem.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 7 dní, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 30 dní, kromě dneška.
- Posledních 90 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 90 dní, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy z tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Filtrovat podle vyhledávání

Můžete využít možnosti vyhledávání pro snadné a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

Na základě typu účtu jsou k dispozici následující možnosti vyhledávání:

Case Box (Klinika)	Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře
Work Box (Laborať)	Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky

Detaily případu

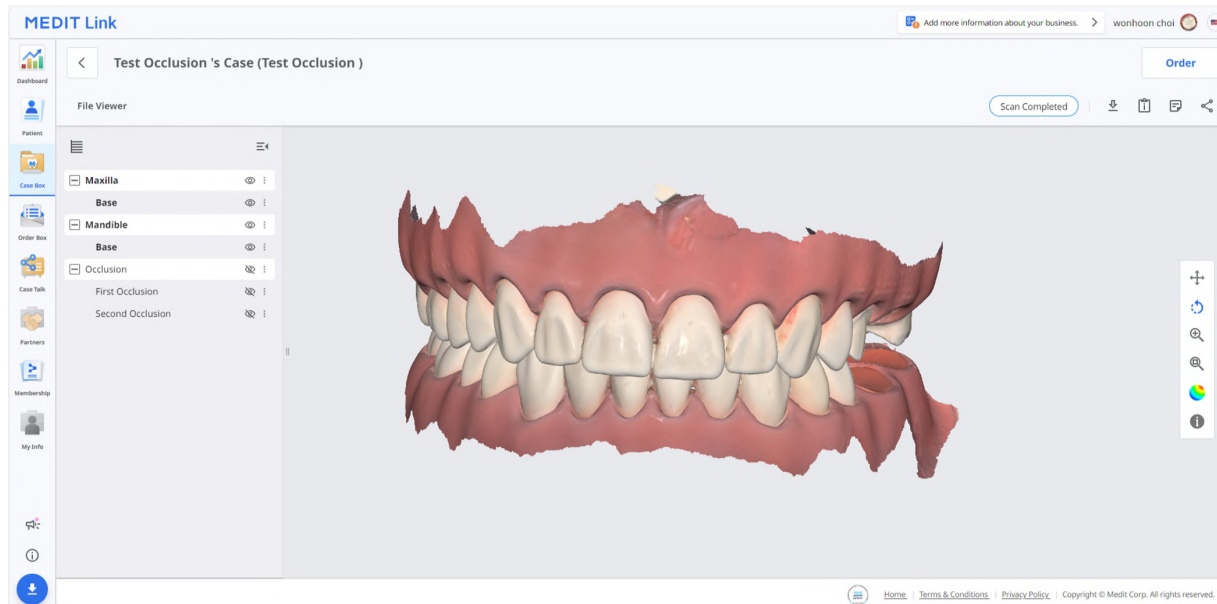

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující nástroje pro správu případů.

	Stav případu	Zobrazit stav případu.
	Přejít do Order Box/In Box	Poskytne zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Stáhnout	Stáhněte si soubory v případě do místního PC.
	Info o případě	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky a značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případě svým partnerům.
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů.

Order Box/In Box

Order Box (Klinika) nebo In Box (Laboratoř) zobrazuje objednané případy v aplikaci Medit Link.

Detaily objednávky

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazí název případu a jméno pacienta. |
| 2 | Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení). |
| 3 | Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů |
| 4 | Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případu, připomínky & značky, atd. |
| 5 | Zobrazit podrobné informace o objednávce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky. |
| 6 | Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení. |


Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace objednávky, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínky a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, které určíte, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím „Case Talk“ v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

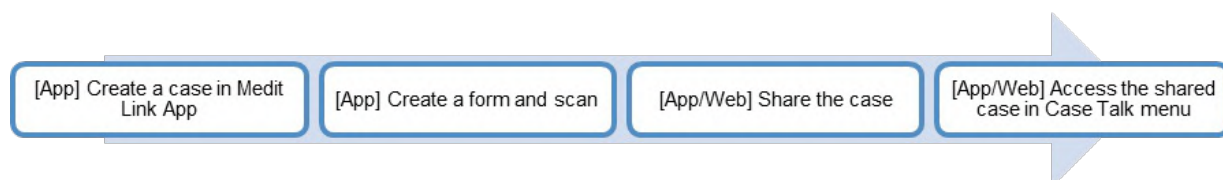


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.


Vytvoření Case Talk

Sdílený odkaz můžete vytvořit k případu, vytvořenému v Case Box/Work Box.

1. Najděte případ, který chcete sdílet a klikněte na tlačítko „Sdílet“ vpravo.

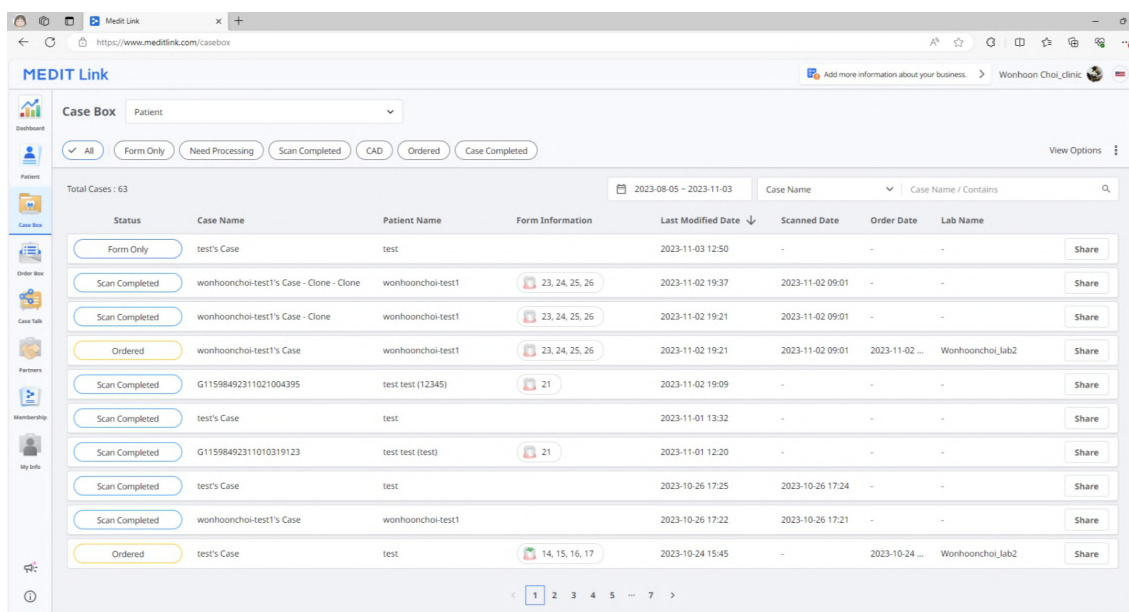

2. Vyberte soubory, které chcete sdílet.

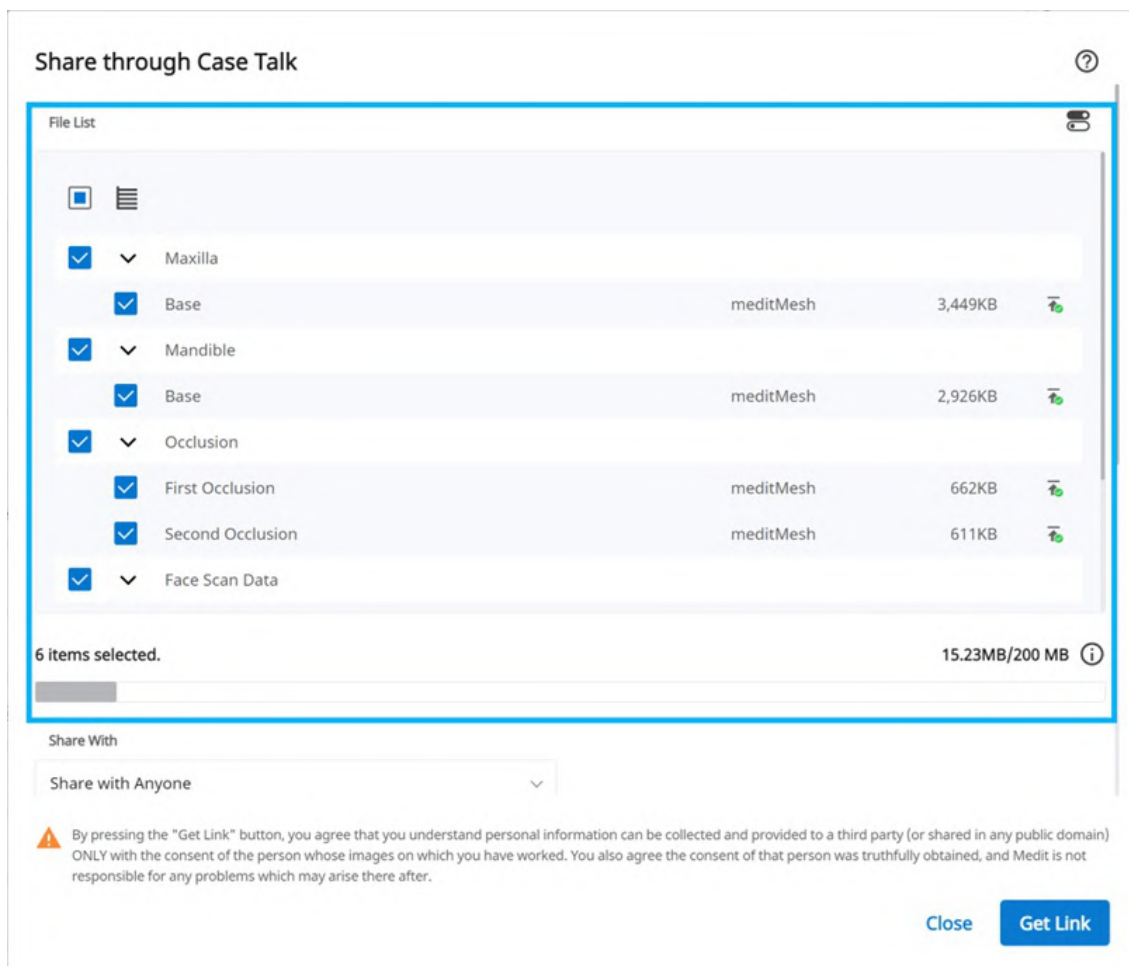

3. Nastavte typ oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení.
4. Kliknutím na „Získat odkaz“ vytvoříte sdílený odkaz.

Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via



PIN Code



PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024



By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Sdílet s	• Sdílet s kýmkoli Vytvoří sdílený odkaz. Soubory můžete sdílet s kýmkoli. • Sdílet s konkrétními lidmi Vytvoří a odešle sdílený odkaz konkrétním lidem.
Sdílet prostřednictvím	Pokud vyberete „Sdílet s konkrétními lidmi“, odkaz můžete sdílet s konkrétními lidmi různými způsoby. • Emailová adresa • SMS • Partners
Datum Expirace	Nastavte datum expirace odkazu. Po vypršení platnosti odkazu už k němu lidé, se kterými jste odkaz sdíleli, nebudou mít přístup k souboru. Období expirace můžete od dnešního dne prodloužit až o 90 dní.
PIN kód	Nastavte 6-místný přístupový kód pro zajištění bezpečnosti dat.
Sdílet jméno pacienta	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni lidé připojeni k odkazu, uvidí jméno pacienta.
Udělit povolení ke stažení	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni uživatelé se sdíleným odkazem mohou stahovat soubory.
Povolit komentáře	• Pokud zaškrtnete tuto možnost, budete moci komunikovat prostřednictvím sdíleného odkazu. • Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, příjemce bude moci pouze zobrazit vaše komentáře, ale nebude moci přidávat své vlastní.
Komentář	Můžete zanechat zprávu v sekci komentáře.

Detaily Case Talk

Soubory můžete vidět ve sdíleném případě. Na stránce detaily Case Talk jsou k dispozici následující funkce.

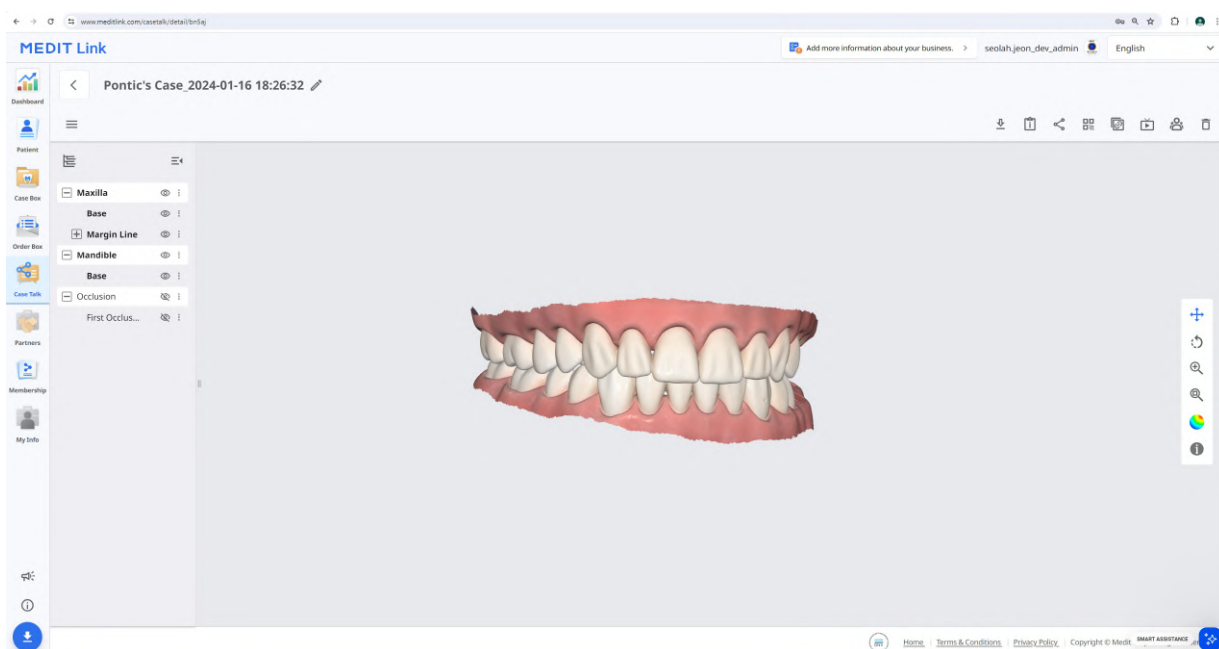

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do místního počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	QR kód	Sdílejte případ QR kódem.
	Kopírovat odkaz	Zkopíruje sdílený odkaz do schránky. Zkopírovaný odkaz zobrazí sdílené soubory ve vašem webovém prohlížeči.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, přistupující ke sdílenému odkazu.
	Odstranit	Odstranit sdílený odkaz. Smazaný sdílený odkaz již není přístupný.

Poznámka


Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Web Viewer

Sdílená data můžete zobrazit ve webovém prohlížeči přes Case Talk.

S osobami, které mají přístup k odkazu, je možné komunikovat využitím anotací a komentářů.

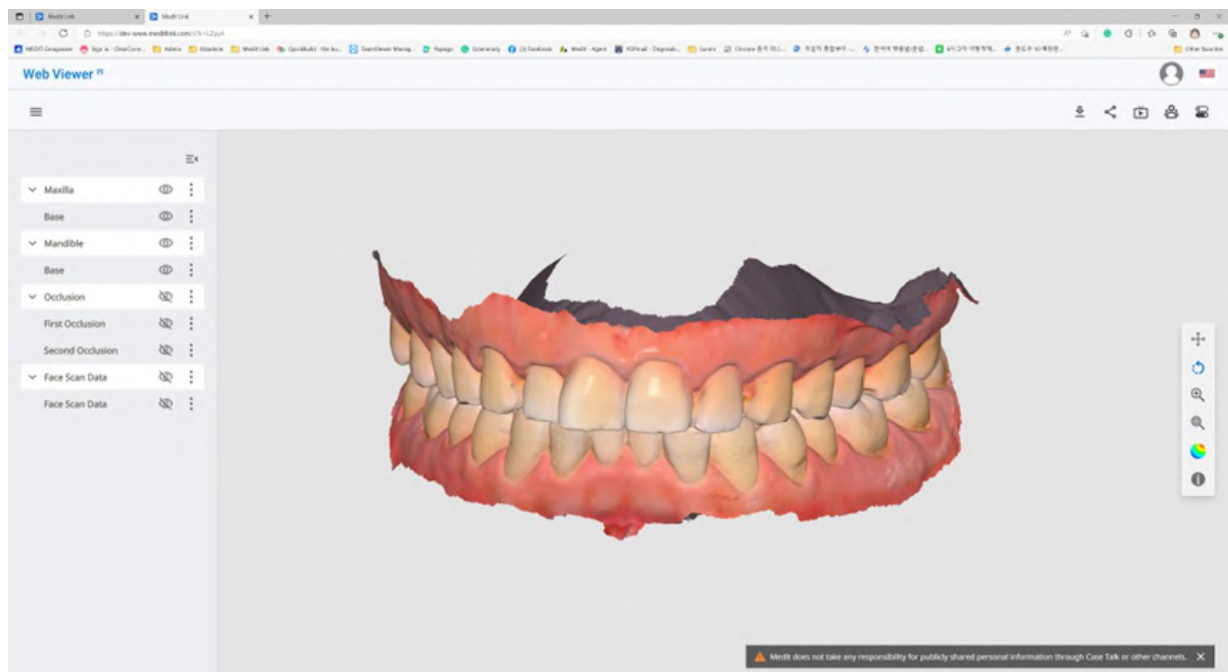

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do počítače.
	Info o případu	Zobrazit detailní informace o případu.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	QR kód	Sdílejte případ QR kódem.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, připojené ke sdílenému odkazu.
	Značení zubu	Změňte systém značení zubů.


Poznámka

Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Anotace

Do určité lokality na 3D modelu můžete přidat anotace. Kdokoli s odkazem může zobrazit anotace, které přidáte.

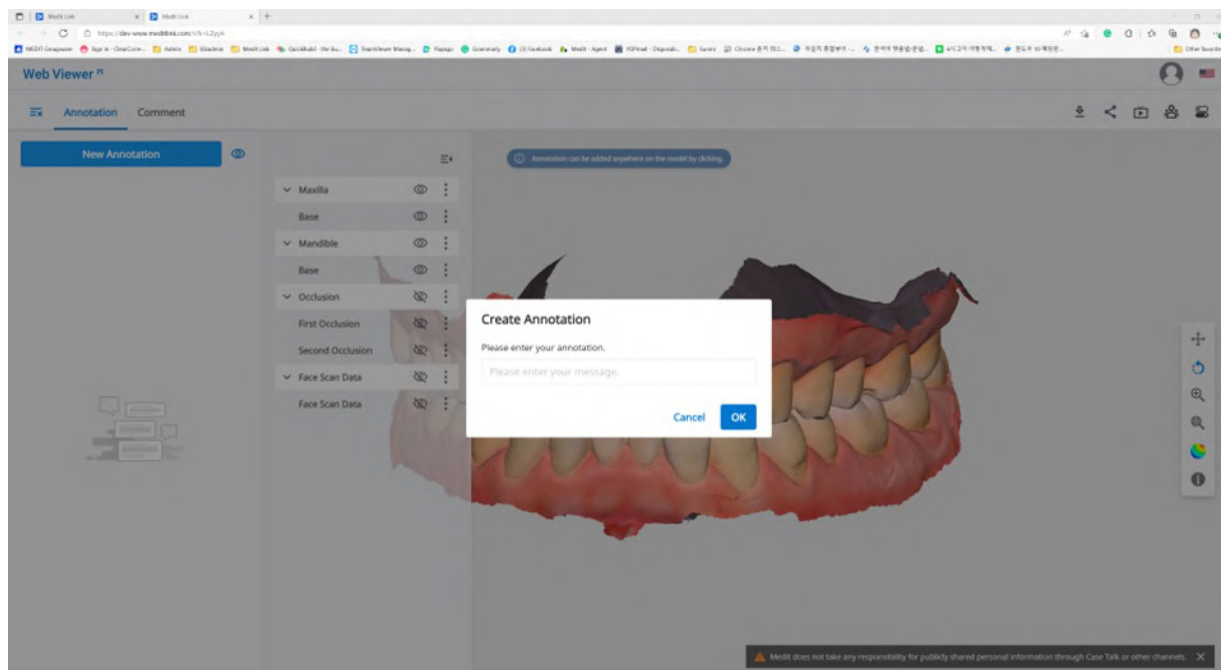

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Anotace

1. Najděte ikonu menu v levém horním rohu a vyberte záložku „Anotace“. Pomocí tlačítka „Nová anotace“ můžete kliknutím přidat kamkoli k datům anotaci.
2. Napište zprávu a kliknutím na „OK“ ji uložte.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

3. Anotace můžete použít jako jednoduchý komunikační kanál. Kliknutím na vytvořenou anotaci zadejte odpověď a stiskněte „Poslat“.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Komentáře

S uživateli, kteří mají přístup k odkazu, můžete komunikovat prostřednictvím záložky „Komentář“ v menu Web Viewer.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Komentář

Sdílení obrazovky v reálném čase

Svou obrazovku můžete sdílet v reálném čase.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Live

1. Klikněte na „Live“ pro sdílení obrazovky Web Viewer s připojenými uživateli.





2. Kliknutím na „OK“ zahájíte sdílení obrazovky.
3. Ostatní osoby, které použili odkaz, musí přijmout sdílení obrazovky.
4. Obrazovka uživatele, který zahájil sdílení obrazovky, se zobrazí synchronizovaně s obrazovkou osoby, která obdržela požadavek.


Datový strom

Všechna data jsou seskupena a zobrazena podle atributů v datovém stromu. Můžete zobrazit nebo skrýt data, upravit opacitu a tak dále.

Ovládání datového stromu

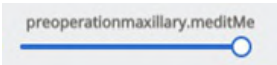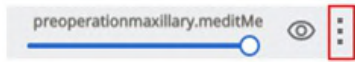Zobrazit / Skrýt	Kliknutím na ikonu „oko“ zobrazíte nebo skryjete data v náhledu. Ovládejte viditelnost dat jako skupinový nebo samostatný soubor.
Opacita	Umístěním ukazatele myši na viditelný prvek zobrazíte posuvník opacity. Upravte posuvník a změňte průhlednost dat. 
Rozšířené menu	Rozšířené menu se nachází na pravé straně každého elementu Datového stromu. Zahrnuje následující možnosti:  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data kromě aktuálních dat. • Skrýt: Skryje aktuální data.

3D ovládání modelu

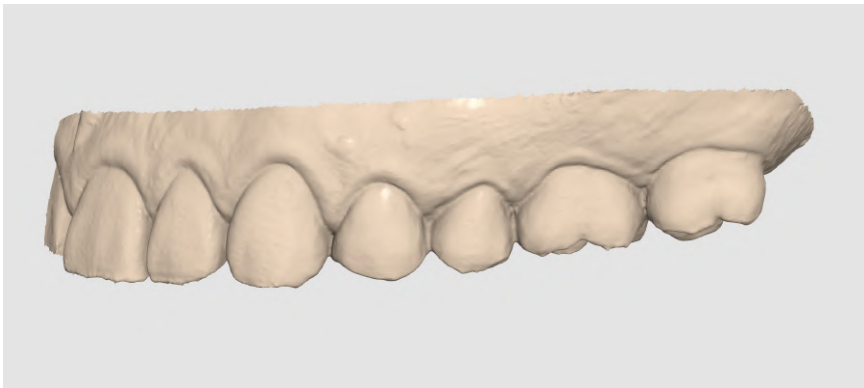+	Panorámovat	Posunout model.
○	Otočit	Otočit model.
≈	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
🔍	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicuje do středu obrazovky.
•	Režim zobrazení dat	Zobrazte data barevně s matným povrchem (Phong vykreslování). 
•		Zobrazí data v jedné barvě. 

Partners

Můžete vyhledávat potenciální partnery a požádat o partnerství a zobrazit seznam současných partnerů.


Poznámka

Služby využívající Google Maps nejsou dostupné na Medit Link China.

Vyhledávání Partnerů


Můžete vyhledávat uživatele Medit Link na základě jejich obchodního názvu a/nebo adresy.

Ve výsledcích vyhledávání můžete odeslat žádost o partnerství podniku, se kterým byste chtěli spolupracovat.

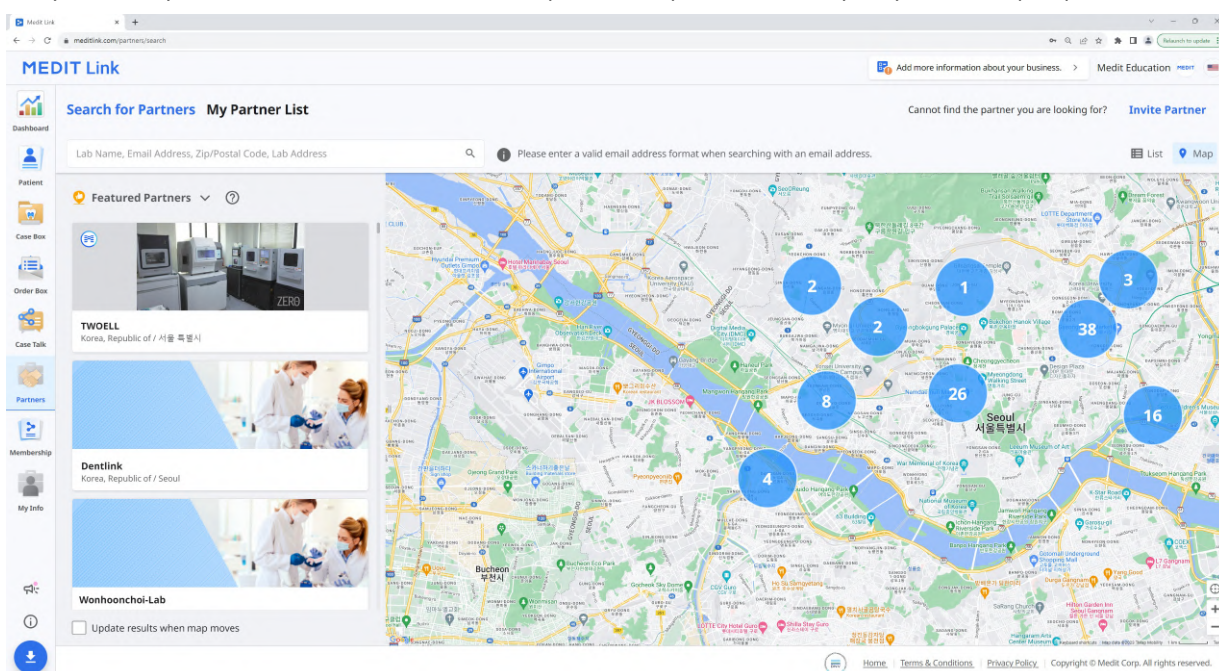

Můj seznam partnerů

Vaše současná partnerství se všemi stávajícími partnerskými firmami si můžete prohlédnout v seznamu Můj seznam partnerů.

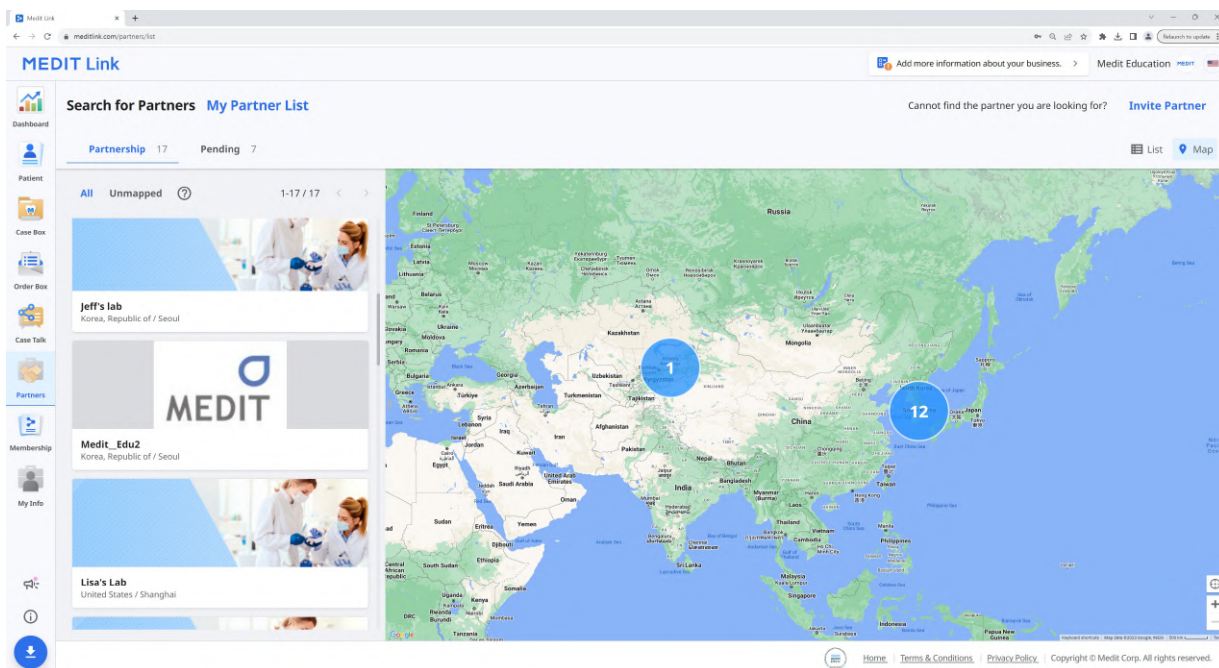

Pozvání partnera

Pokud máte kliniku nebo laboratoř, se kterými chcete spolupracovat, můžete je pozvat, aby se přidali k Medit Link. Partnerství bude automaticky vytvořeno, jakmile přijmou pozvání.

1. Klikněte na „Pozvat partnera“ v levé horní části obrazovky.
2. Zadejte e-mailovou adresu podniku, se kterým chcete spolupracovat a pošlete mu pozvánku se žádostí o partnerství.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Jakmile pozvaná organizace přijme pozvání a zaregistruje se do Medit Link, partnerství bude automaticky navázáno.

Membership

Členství

The screenshot displays the MEDIT Link web interface. The top navigation bar includes 'MEDIT Link', a user profile 'seolahjeon_', and a language dropdown set to 'English'. The main navigation menu on the left lists 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info'. The 'Membership' section is active, showing tabs for 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The 'Medit Cloud Storage Plan' is highlighted, showing a '2 GB Plan' and a '10 TB Plan'. The '10 TB Plan' is selected, displaying a 'Free (Promotion)' status with a 'Subscribe' button. Below this, the '10 TB Plan Benefits' are listed: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A '10 TB Plan Benefits' box shows a '10 TB Plan' with a 'qqqq' code and an expiration date of '2025-06-26'. A note states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More. Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A Here.' The 'Cloud Storage' section shows a 'Set Period' of '2018-01-01 ~ 2025-02-17' and a circular progress indicator showing '3.46 GB / 10 TB'. Below this, a table lists storage items: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (52.36 GB), and 'Result Files & Attachments' (3.46 GB). The footer contains links for 'Home', 'About', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Co., Ltd.'.

Medit Cloud Storage Plan

Můžete vidět, co nabízí každý plán, včetně slevových kuponů a poukázek, ale také aktuální stav předplatného. Kdykoli můžete váš plán aktualizovat nebo zrušit předplatné.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link poskytuje následující plány cloud úložiště:

2 GB Plan

- Standardní plán zdarma pro všechny přihlášené uživatele
- 2 GB cloud úložiště
- Pro nové uživatele

10 TB Plan

- Placený plán
- 10 TB cloud úložiště
- Pro uživatele s mnoha případy a různými daty
- Měsíční bezplatná zkušební verze


	2 GB Plan	10 TB Plan
Cloud úložiště	2 GB	10 TB
Měsíční poplatek	Zdarma	\$9.99/měsíc
* Cloud úložiště nezapočítává do využitého prostoru surová data.		

Poznámka

Plány členství budou k dispozici také na Medit Link China. Až do oficiálního vydání funkce si můžete užívat 10 TB Plan zdarma.

Cloud úložiště

V pravé části můžete spravovat své cloudové úložiště.

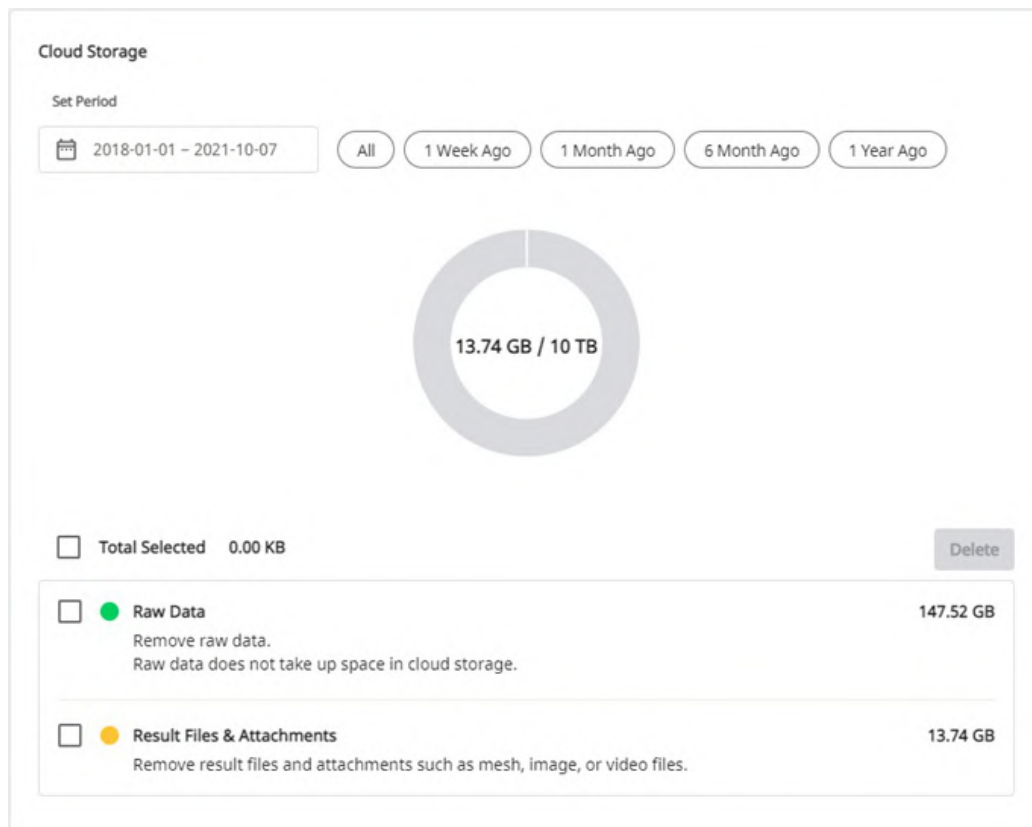

Nastavit období	Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci. • Vše: Zobrazit všechny soubory. • Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření. • Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření. • Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření. • Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.
Surová data	Surová data nezabírají prostor v cloud úložišti, takže nebudou v pi-grafu. V případě potřeby také z této lokality můžete spravovat surová data, například je smazat, čímž chráníte soukromé informace pacienta.
Výsledky & Přílohy	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudu. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo.

Přihlásit se k odběru

Pokud aktuálně využíváte 2 GB Plan nebo 10 TB Plan s kódem pro uplatnění, můžete se přihlásit k odběru 10 TB Plan.

Platba se provádí službou Stripe (www.stripe.com).

1. Přejdete na Členství > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan a klikněte na tlačítko „Přihlásit se k odběru“.

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Zkontrolujte popis 10 TB Plan a znovu klikněte na „Přihlásit se k odběru“.

Subscribe Membership

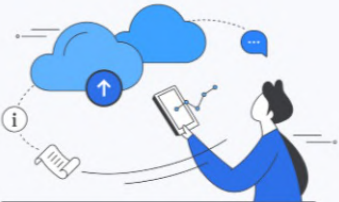

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel

Subscribe

3. Zkontrolujte cenu a podmínky a zadejte potřebné informace pro platbu. Poté klikněte na „Přihlásit se k odběru“.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

- \$9.99

100% off for a day

Tax ⓘ

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe

Terms

Privacy

4. Platba může trvat několik sekund. Po dokončení se zobrazí potvrzovací zpráva.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice


Close

Zrušit předplatné

Vaše předplatné můžete zrušit kdykoli. Po zrušení můžete i nadále využívat po zbývajících dny zaplaceného měsíce 10 TB Plan. Od dalšího dne platného období se váš plán změní na 2 GB Plan a cloud úložiště bude omezeno na 2 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

1. Klikněte na „Odhlásit se z odběru“.
2. Klikněte na „Zrušit předplatné“.

Cancel Subscription

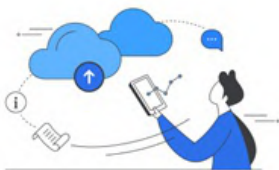

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Chcete-li potvrdit, že se chcete odhlásit, klikněte znovu na „Zrušit předplatné“ v novém vyskakovacím okně.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Vaše předplatné bylo zrušeno.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription has been canceled.

You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.


If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Od dalšího dne platného období se váš plán změní na 2 GB Plan a cloud úložiště bude omezeno na 2 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

Moje předplatné

Můžete zobrazit detaily o vašem aktuálním předplatném, znovu se přihlásit k odběru nebo odběr zrušit v části Moje předplatné. Můžete také změnit platební metodu, která bude použita od příští naplánované platby.

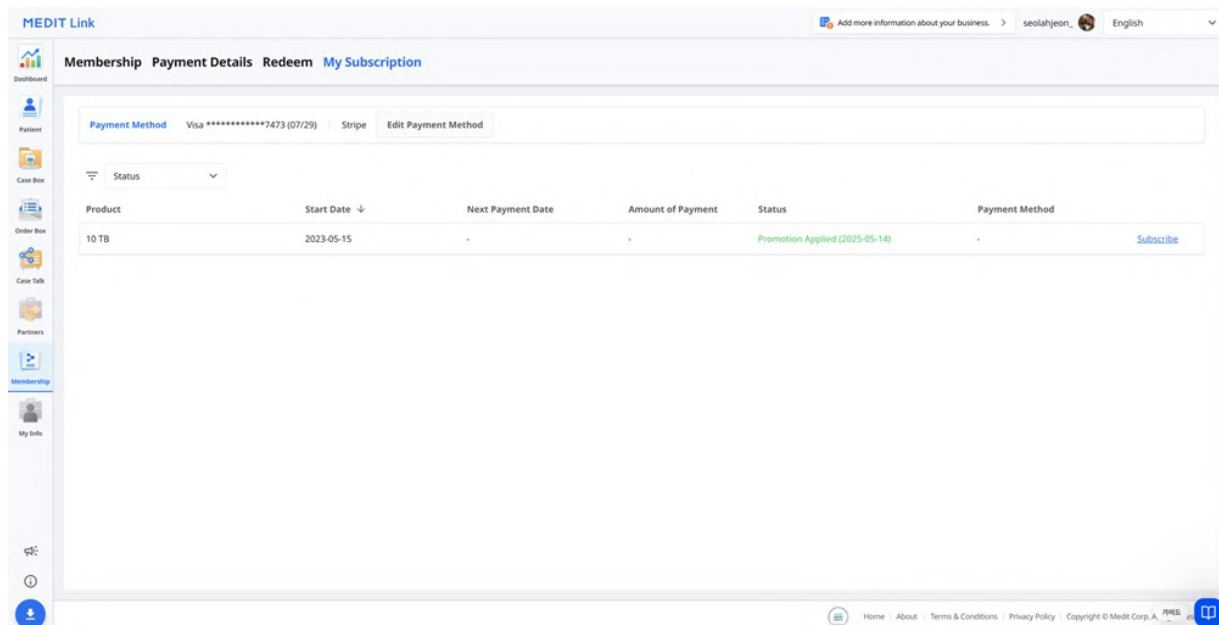

Detaily


Položka	Popis
Produkt	Zobrazuje typ předplatného.
Datum začátku	Zobrazuje, kdy odstartovalo předplatné nebo promo akce.
Datum příští platby	Zobrazí datum příští platby.
Částka platby	Zobrazí částku platby.
Stav	Předplatné - Aktivní: Předplatné je aktivní. - Vypršení platnosti již brzy: Předplatné nebude obnoveno k datu příští platby a bude zrušeno. - Platnost vypršela: Předplatné skončilo. Akce - Akce uplatněna: Promo kód je nyní aktivní. - Akce čeká: Promo kód čeká na aktivaci. - Akce vypršela: Platnost promo kódu vypršela.
Platební metoda	Zobrazuje poslední čtyři číslice karty použité k platbě.

Přihlásit se znovu k odběru


Položka	Popis
Plán Cloud úložiště	Kliknutím na tlačítko odběru se znovu přihlaste k odběru 10 TB Plan.
Aplikace plánu předplatného	Pro opětovné přihlášení se k odběru se přihlaste do aplikace.

Jak přidat platební metodu

1. Klikněte na „Upravit platební metodu“.

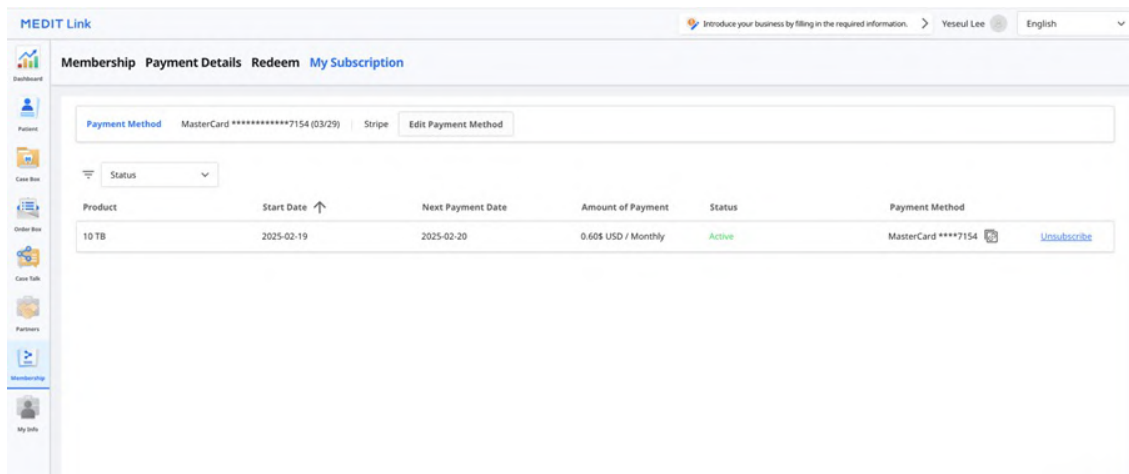

2. Klikněte na „Přidat platební metodu“.

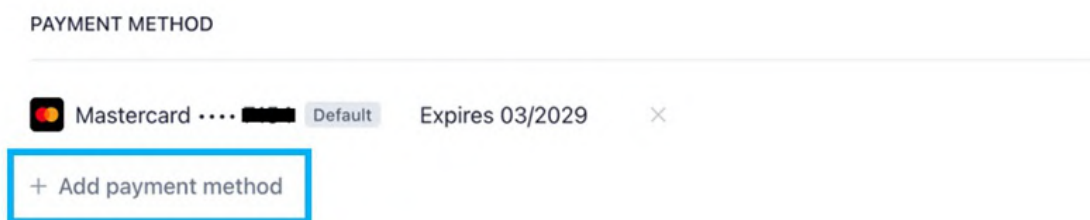

3. Zadejte požadované informace a klikněte na „Přidat“.

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow MEDIT USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. Nově přidaná platební metoda bude nastavena jako výchozí a použita od příští platby.

PAYMENT METHODS



Jak změnit platební metodu

1. V dialogovém okně fakturace klikněte na ikonu rozbaleného menu vedle způsobu platby, který chcete změnit.

PAYMENT METHODS



2. Kliknutím na „Nastavit jako výchozí“ nastavíte vybranou kartu jako výchozí platební metodu.


CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

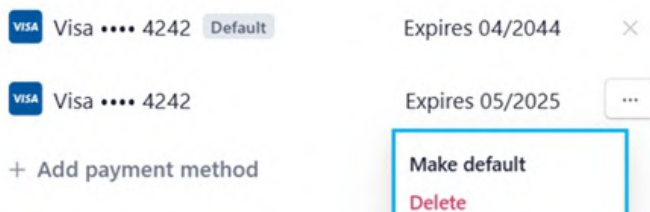

Uplatnění

Můžete si uplatnit promo kód pro bezplatný přístup k 10 TB Plan.

Detaily

MEDIT Link
Add more information about your business.
seolah.jeon_dev_admin
English

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Register Redeem Code
Register

Redeem Code
All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4A87	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home
About
Terms & Conditions
Privacy Policy
Copyright © Medit Corp.
GUIDES

Položka	Popis
Produkt	Zobrazuje plán, na který se vztahuje promo akce.
Akce	Zobrazuje název promo akce.
Číslo Kódu	Zobrazuje číslo kódu.
Datum registrace	Zobrazuje datum registrace kódu.
Z	Zobrazuje datum začátku promo akce.
Do	Zobrazuje datum expirace promo akce.
Stav	- Registered: Promo kód byl přidán a je nyní k dispozici. - Waiting: Promo kód čeká na aktivaci. - Activated: Promo kód je nyní aktivní. - Used: Platnost promo kódu vypršela.

Registrovat kód kupónu

- Zadejte kód kupónu a klikněte na „Registrovat“.
- Přečtěte si upozornění a ve vyskakovacím dialogovém okně zvolte „Registrovat“ nebo „Použít“.
 - Registrovat:** Zaregistrujte kód kupónu. Kód pro uplatnění můžete aktivovat a použít později po registraci.
 - Použít:** Zaregistrujte se a aktivujte kód kupónu pro jeho uplatnění. Akční sleva platí okamžitě.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Aktivovat kód kupónu

Můžete zaregistrovat více kódů kupónu, ale musíte aktivovat ten, který chcete použít.


1. Vedle kódu, který chcete použít, klikněte na tlačítko „Aktivovat“.
 - Pokud neexistuje žádný kód se stavem „Activated“, bude okamžitě použit kód vybraný vámi.
 - Pokud již aktivovaný kód existuje, nově zvolený kód se změní na stav „Waiting“. Když vyprší platnost aktuálně aktivovaného kódu pro uplatnění, automaticky se aktivuje nový kód pro uplatnění ve stavu „Waiting“.

Poznámka

Lze aktivovat pouze jeden kód pro uplatnění a pouze jeden může být ve stavu „Waiting“.

Detaily platby


Historii předplatného a plateb můžete zobrazit na kartě Detaily o platbě.

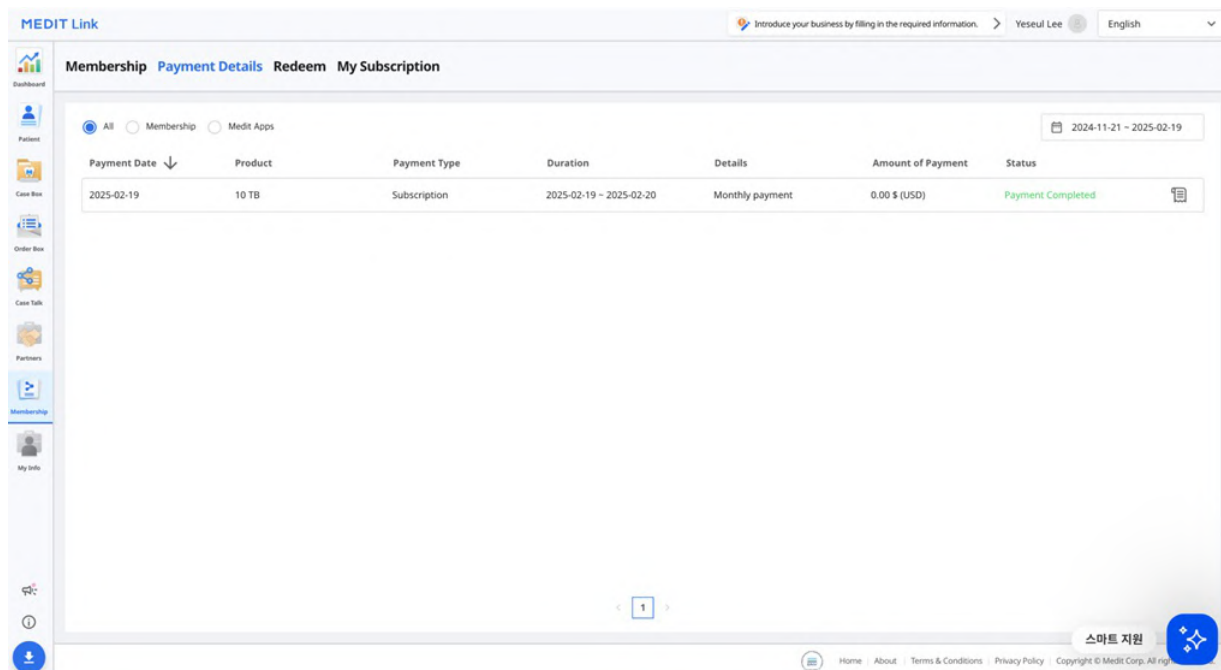

Položka	Popis
Datum platby	Zobrazuje datum platby.
Produkt	Zobrazuje zakoupený plán nebo aplikaci.
Typ platby	Zobrazuje typ platby: • Předplatné • Jednorázová platba
Trvání	Zobrazuje období předplatného.
Detaily	Zobrazí detailní informace o platbě.
Částka platby	Zobrazí částku za předplatné nebo jednorázový nákup.
Stav	• Payment Completed: Platba byla zpracována. • Payment Failed: Platba nebyla zpracována. • Payment Incomplete: Platba nebyla dokončena. Pokračujte kliknutím na „Zaplatit nyní“. • Čekající: Platba čeká na obnovení předplatného.

Zobrazit detaily faktury

Vaše faktury a potvrzení plateb můžete zobrazit kliknutím na ikonu potvrzení vpravo.

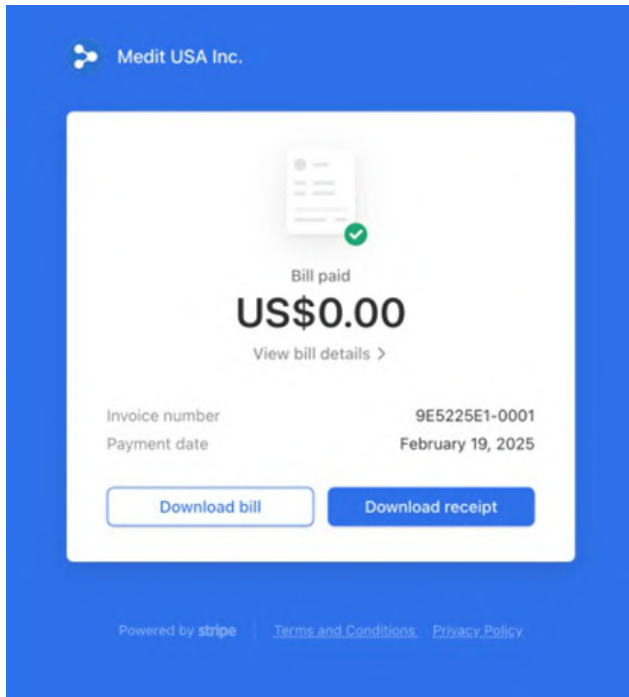

Detaily platby zobrazíte kliknutím na „Zobrazit detaily faktury“.

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	
	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Můj účet

V sekci My Info si můžete prohlédnout a upravit informace, které jste uvedli při registraci a zkontrolovat stav vašeho členství.

← → ↻ 🔍 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

**Account Information**

Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English

Country/Region

Korea, Republic of

 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)

Můžete si prohlédnout a upravit informace o vaší klinice nebo laboratoři. Tato část je dostupná pouze pro účet administrátora.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

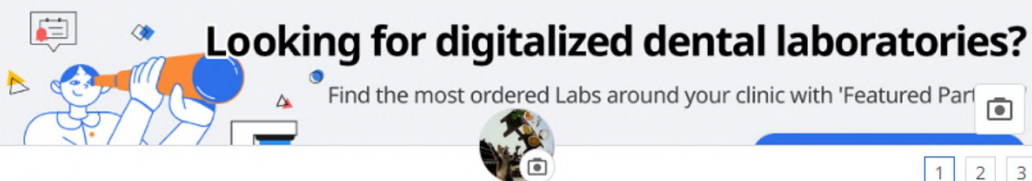

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Můj skener

Můžete zkontrolovat informace o připojeném zařízení pro účet.

Položka	Popis
Typ	Zobrazuje název modelu.
Sériové číslo	Zobrazuje sériové číslo zařízení.
Doba používání	Indikuje, jak dlouho bylo zařízení používáno.
Stav	Zobrazuje stav registrace zařízení: „Registrováno“ indikuje, že skener byl úspěšně připojen a zaregistrován. „Neregistrováno“ indikuje, že skener již není registrován. Pokud je skener zaregistrován v jiné skupině, přijde o svou registraci v aktuální skupině.
Naposledy připojen	Zobrazuje datum posledního připojení.
Naposledy zkalibrován	Zobrazuje datum poslední kalibrace.
Datum začátku záruky	Zobrazuje datum aktivace záruky.
Datum expirace záruky	Zobrazuje datum expirace záruky.
Zbývajících počet dní	Zobrazuje počet dní zbývajících do expirace záruky.
Koupit	Umožňuje uživateli zakoupit a prodloužit záruku.
Smazat ikonu	Umožňuje uživateli odebrat skener ze seznamu.

Jiné Menu

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Související webstránky

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Academy, Medit Academy YouTube a Medit Centrum nápovědy.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Stáhnout aplikaci Medit Link

Nejnovější verzi instalačního programu si můžete stáhnout z webu. Toto menu je užitečné, když ztratíte instalační program, poskytovaný v balíčku produktu nebo máte zastaralý instalační program.

Poznámka

Medit Link se aktualizuje automaticky, když máte připojení k internetu.



Windows

macOS

Náhled

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Lišta záhlaví	Viz Aplikace Medit Link > Lišta záhlaví pro více informací.
2	Menu	Viz Aplikace Medit Link > Menu pro více informací.
3	Nástroje a funkce	Viz Aplikace Medit Link > Prohlížeč souboru a Aplikace Medit Link > Možnosti zobrazení pro více informací.
4	Seznam případů	Viz Aplikace Medit Link > Filtrování a vyhledávání pro více informací.

Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.

Typ účtu		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Účty kliniky	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Člen	O	O	O	X	X	O	* Pouze funkce obnovení	O
Účty laboratoře	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Člen	X	X	X	O	O	O	* Pouze funkce obnovení	O

Lišta záhlaví

Záhlaví poskytuje rychlý přístup k funkcím, jako jsou informace o účtu, upozornění, upozornění a aktualizace, nastavení a stav sítě.



Moje informace

Moje info obsahují základní informace o uživateli, jako je profilový obrázek, název kliniky nebo laboratoře, e-mailová adresa a uživatelské jméno.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Upozornění

Je možné vidět oznámení o partnerství nebo informace související s účtem.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Zaškrtnutím políčka zobrazíte pouze nepřečtené zprávy. |
| 2 | Kliknutím na jakékoli oznámení se okamžitě přesunete na související případ nebo webovou stránku. |

Upozornění a aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Nastavení

Dialog Nastavení umožňuje uživatelům konfigurovat program.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Pokud není síťové připojení dobré, můžete zaznamenat následující omezení:

- Některé funkce budou omezeny, například objednání případu, vytvoření případu, sdílení přes Case Talk a cloud synchronizace.
- Celkový výkon služby může být snížen vlivem síťového prostředí.

V tomto případě můžete přejít do režimu Offline, abyste mohli provádět základní úkoly. Po připojení bude možné používat funkce, které vyžadují internet.

Poznámka

Symbol sítě označuje rychlost odezvy mezi aktuální oblastí a AWS (Amazon Web Service). Neznamená to rychlost vaší sítě, takže někdy může ukazovat stav jako špatný nebo nevhodný, i když je rychlost vaší sítě dostatečně vysoká.

Pokud druhý proces používá stejnou síť, rychlost může být špatná nebo nedostatečná a celkový výkon Medit Link může být neuspokojivý. V tomto případě prosím nesdílejte síť s jinými procesy.

Například funkce „Nahrát surová data“ je velkou součástí síťového procesu. Pokud symbol ukazuje špatný nebo nedostatečný stav, přejděte do Nastavení > Nahrát surová data a vypněte možnost „Nahrát automaticky“.

Nastavení

Obecné

Poskytuje možnosti pro celkové nastavení systému.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Složka uložení	Zadejte složku, do které se budou ukládat výsledky dat, generované z Medit Link a připojených programů.	
Složka pro instalace aplikací	Zadejte cestu instalace pro Medit Apps a partnerské aplikace dostupné v App Boxu.	
Nastavení jazyků	Vyberte jazyk programu.	
Značení zubů	Vyberte systém označování zubů mezi FDI a USA.	
Upozornění	Po zaškrtnutí budete dostávat upozornění na aktualizace programu.	
Nahrát surová data	Po zaškrtnutí se surová data automaticky nahrávají do cloudu. Pomáhá zálohovat původní data a provádět bezproblémové skenování při použití aplikace Medit Link se stejným účtem na jiném počítači. Platí pouze původní záloha dat do cloudu na data získaná v Medit Scan for Clinics.	
Rychlý sken	Zvolte, zda chcete, aby se níže uvedené fáze skenování automaticky zobrazovaly v Medit Scan for Clinics, aniž byste museli vyplňovat informace z formuláře. • Předoperační pro maxillu • Předoperační pro mandibulu • Sken obličeje	
Možnosti zobrazení	Pokročilé vykreslení	Po zaškrtnutí se 3D model zobrazí v živějším a realističtějším vykreslení.
	Upravit texturu barev	Upravíte jas 3D modelu. * Výsledné barvy se mohou mírně lišit od Medit Link, když stejná data otevřete v jiném softwaru.
Program zlepšování uživatelské zkušenosti Medit	Přidejte se k Programu zlepšování uživatelské zkušenosti Medit. • Shromážděné informace používáme ke zlepšení našich produktů a služeb. • Neshromáždíme žádné informace, které by identifikovaly konkrétního jednotlivce.	
Výchozí stránka po přihlášení	Vyberte výchozí menu, které se zobrazí při spuštění programu. • Účty kliniky si mohou vybrat mezi Patient a Case Box • Účty laboratoře si mohou vybrat mezi In Box a Work Box	

Správce úložiště

Zkontrolujte a spravujte místní a cloudový úložný prostor.

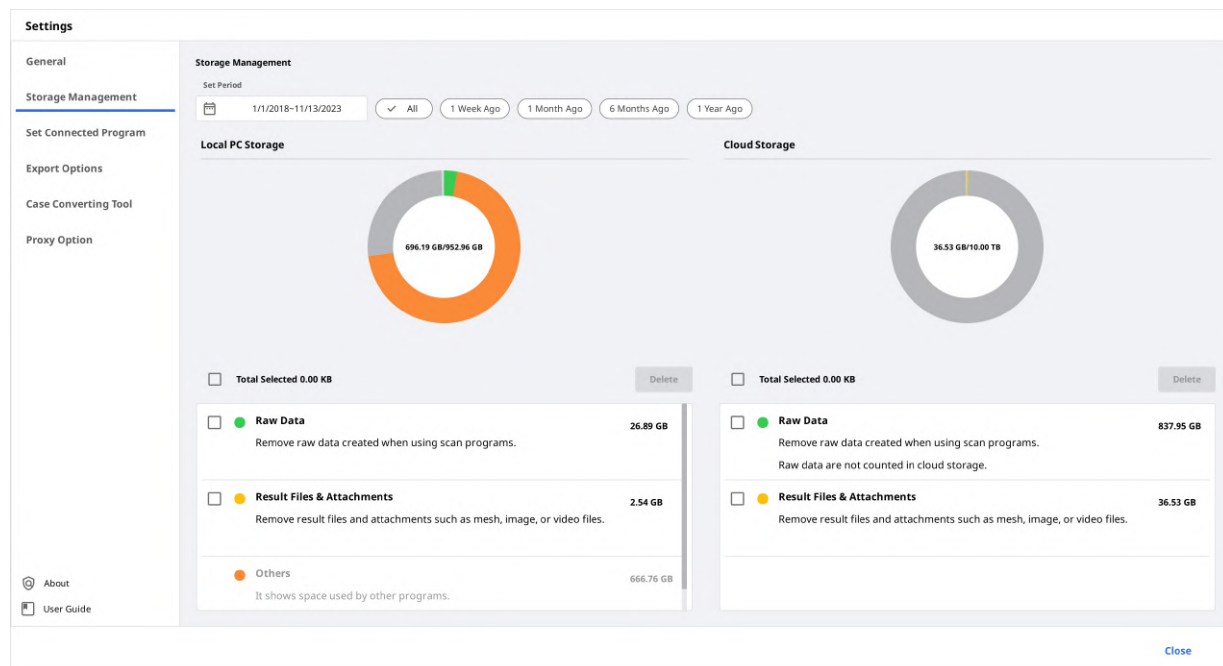

Nastavit období

Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci.

- Vše: Zobrazit všechny soubory.
- Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření.
- Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření.
- Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření.
- Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.

Místní úložiště

Správa úložného prostoru počítače.

Surová data	Odeberte vybraná surová data z počítače. Pokud jsou již surová data nahrána do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Výsledky & Přílohy	Odstraňte z počítače výsledky a soubory příloh, jako je mesh síť, obrázky a videa. Pokud jsou tyto soubory již nahrány do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Jiné	Zobrazit soubory používané k ovládání systému a dalších programů. Zobrazuje úložiště vašeho PC. Tyto soubory nemůžete odstranit z Medit Link.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z počítače.

Cloud úložiště

Správa úložného prostoru cloudu.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Typ	Vyberte program CAD, který chcete použít pro navrhování. Program upraví výsledky na základě vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v návrhu bez jakéhokoli dalšího zarovnání os.
Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit výsledky.
Mesh formát	Specifikujte formát konečného souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat & Kombinovat	Zkomprimovat soubory: Zkomprimujte všechny výsledky do jednoho souboru. Kombinovat individuální struktury: Kombinuje všechny výsledky pro maxillu nebo mandibulu do jednoho souboru. Když používáte některé programy, které neumějí importovat a pracovat s více soubory, můžete je sloučit do jednoho a pracovat v těchto programech.
Možnosti, pokud stejná složka nebo soubor již existuje.	Vyberte výchozí akci pro případy, kdy v cílové cestě existuje stejná složka nebo název souboru. • Při exportu se vždy zeptat. • Exportovat nový soubor a přepsat stávající soubory. Aktuálně uložený soubor bude ztracen. • Vytvořit složku a exportovat soubory
Pravidlo pro název složky	Definujte pravidla pro vytváření názvu složky při exportu souborů. Na pojmenování složek se použijí nastavená pravidla a exportovaný soubor se uloží do vytvořené složky. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky
Pravidlo pro název souboru	Definujte pravidla pro název exportovaného souboru. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky

Nástroj pro převod případů


Případy můžete přesouvat mezi různými účty exportem existujících případů účtu nebo importem případů exportovaných z jiných účtů.

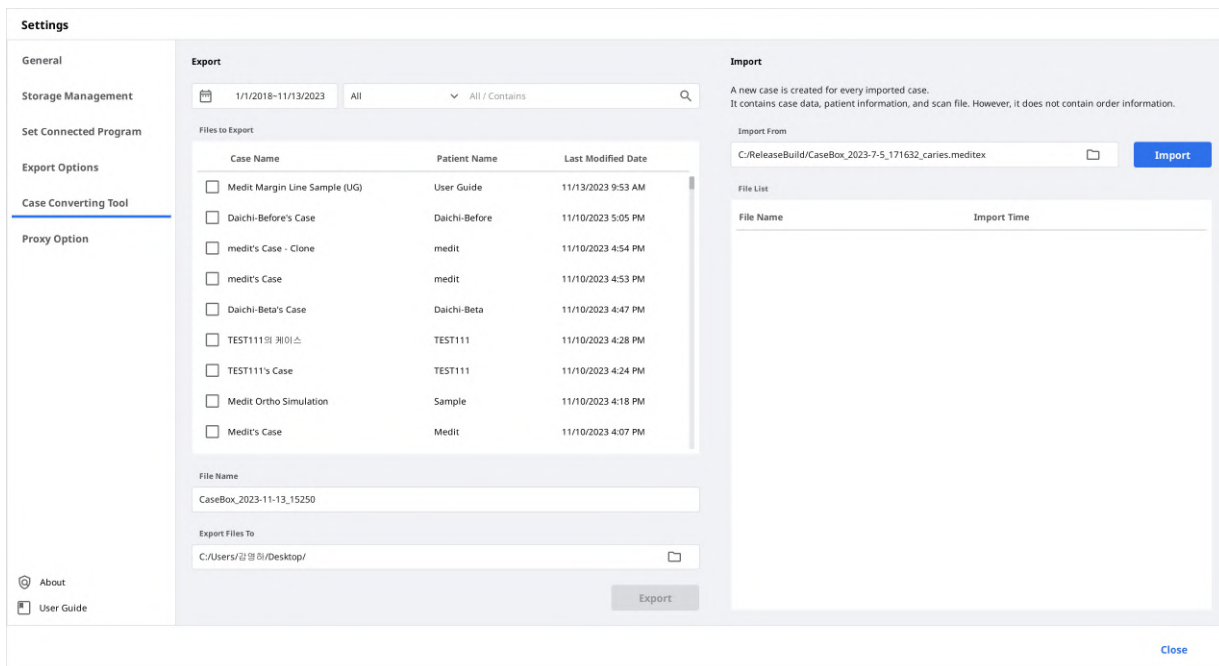


Exportovat případ

Exportujte případy aktuálně přihlášeného účtu do lokálního PC.

1. Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

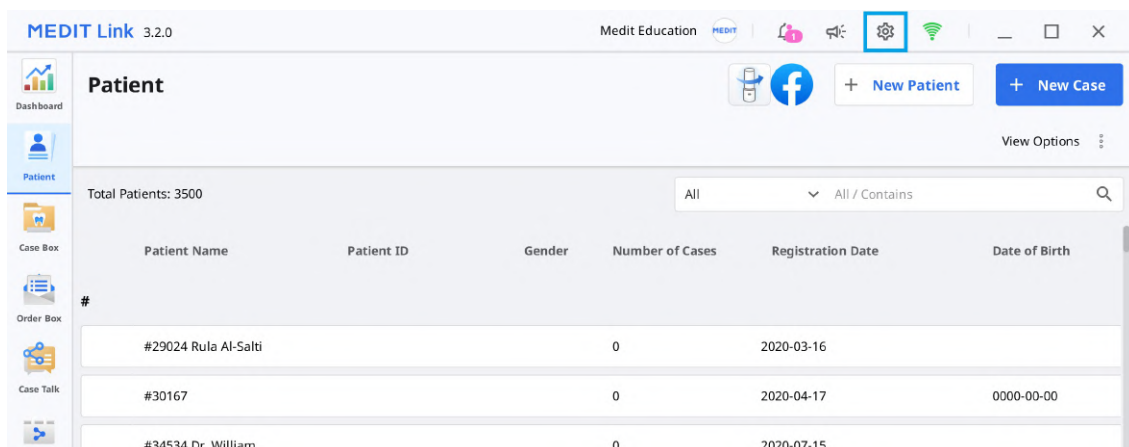

2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

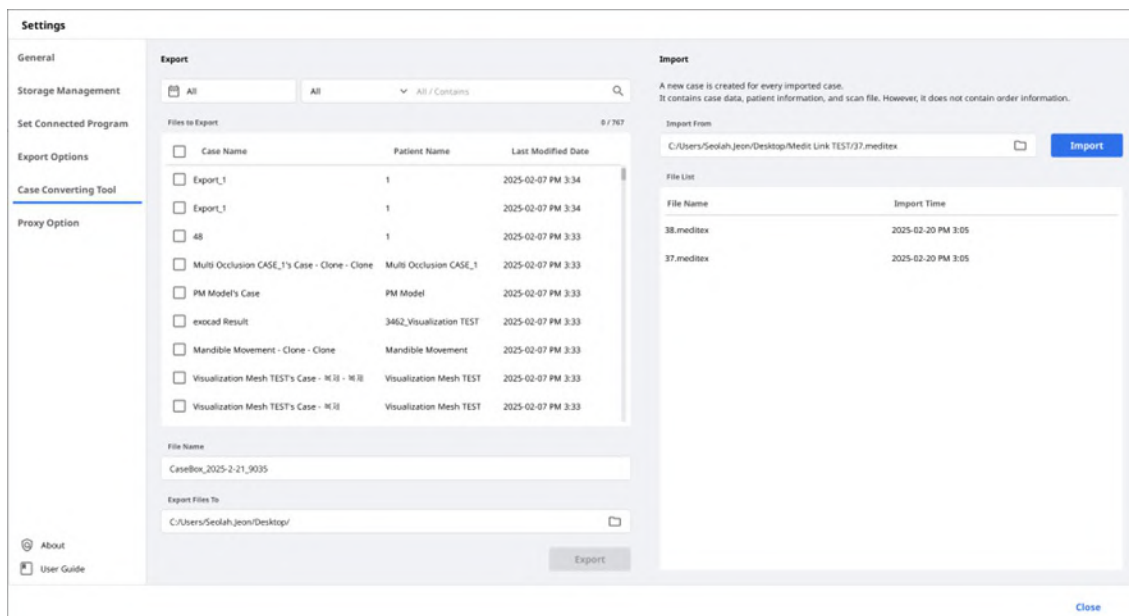

3. V části Exportovat nastavte období nebo vyhledejte v případě potřeby případy k exportu.

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. Vyberte případy, které chcete exportovat, ze seznamu v sekci „Soubory k exportu“.

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. Nastavte název souboru úpravou názvu případu v poli Název souboru.
6. Nastavte cílovou složku pro export vybraných případů.
7. Klikněte na „Exportovat“.
8. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, do které byl soubor exportován.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. Exportované případy jsou uloženy ve formátu souboru .meditex.

Importovat případ


1. Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

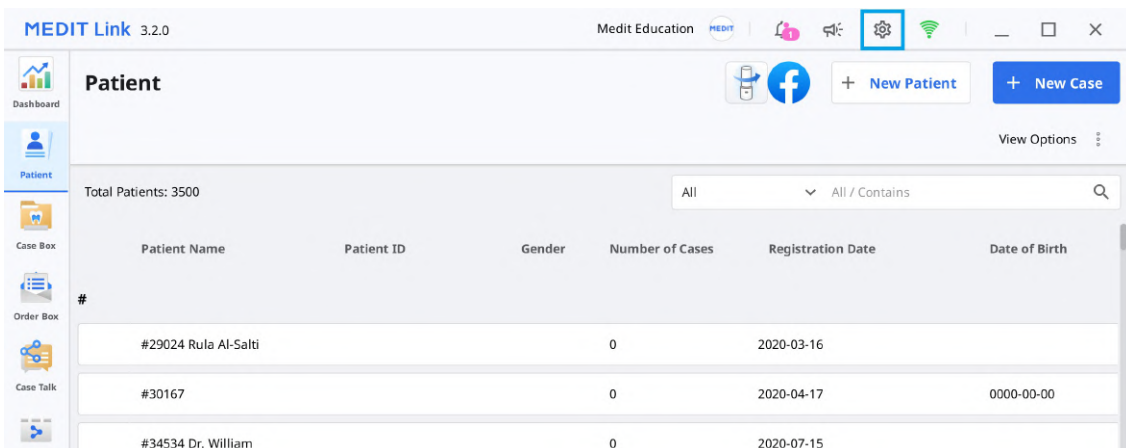

2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

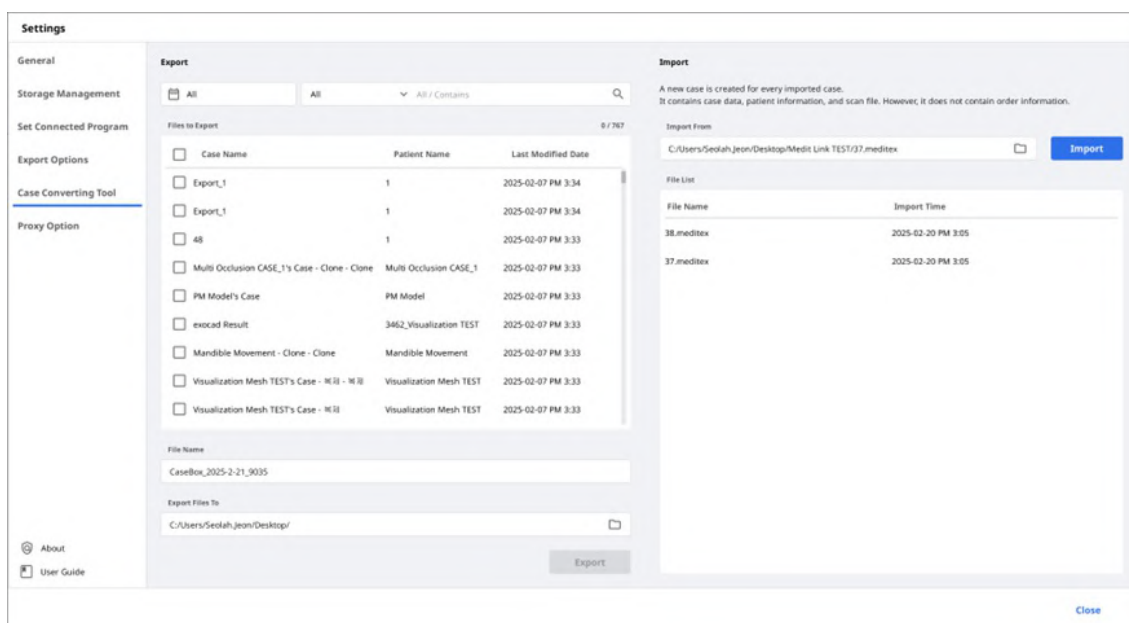

3. V části Importovat klikněte na ikonu složky a vyhledejte v počítači soubor .meditex, který chcete importovat.

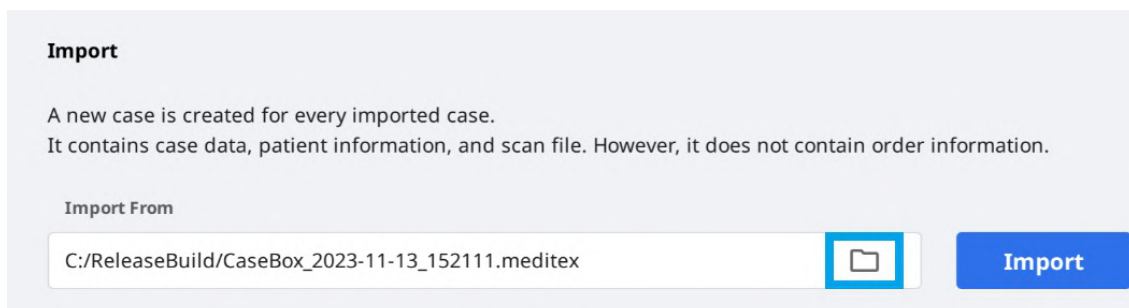

4. Klikněte na tlačítko „Importovat“ a v seznamu níže zaškrtněte soubory, které chcete importovat.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Importovaný případ se také objeví ve vašem Case Box (Účet kliniky) nebo Work Box (Účet laboratoře).

Proxy možnosti

V některých omezených síťových prostředích můžete změnit nastavení sítě.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

O programu

Zobrazit detailní informace o Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Uživatelská příručka


Získejte uživatelskou příručku pro Medit Link.

Otevření Uživatelské příručky vyžaduje připojení k internetu.

Menu

Dashboard

Celkové statistiky, provedené na Medit Link, si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách – jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

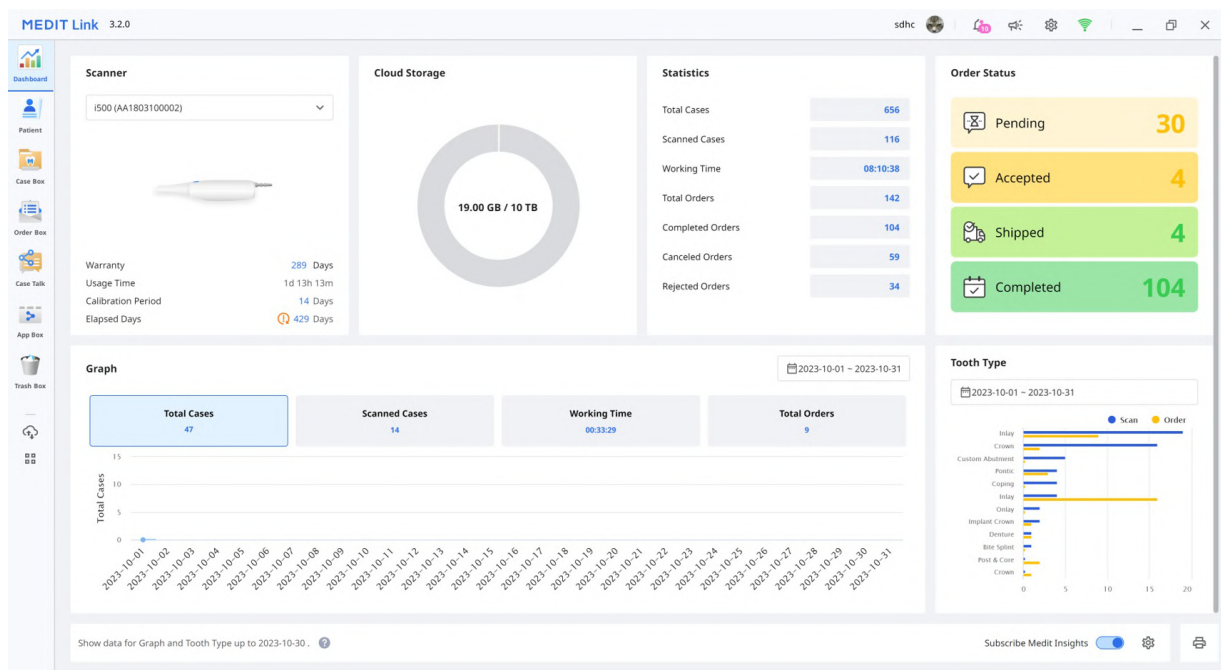

Poznámka

Viz [Web Medit Link > Dashboard](#) pro více informací o Dashboardu a Medit Insights.

Patient

V menu Patient můžete přidávat, upravovat, odstraňovat nebo slučovat pacienty.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggsfsgdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Přidat nového pacienta

1. Klikněte na „Nový pacient“.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo


Cancel Save

2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně Nový pacient a poté klikněte na „Uložit“.

Odstranit pacienta

Pokud pro pacienta neexistují žádné případy, jen tehdy můžete pacienta smazat.

1. Vyberte pacienta, kterého chcete ze seznamu odstranit.

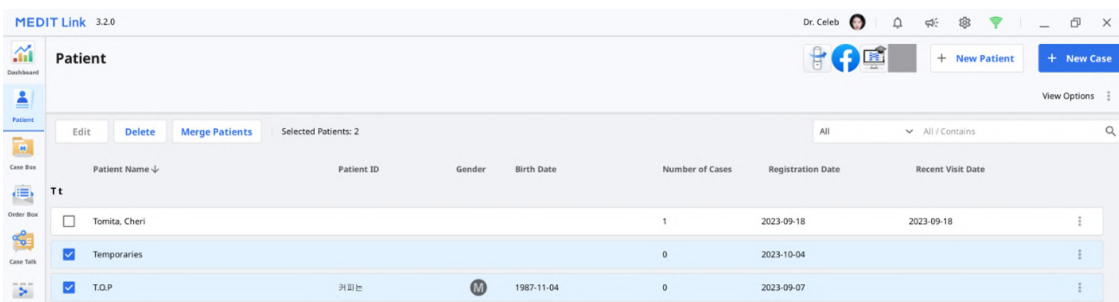


2. Klikněte na „Odstranit“.

Spojit pacienty

Všechny případy více pacientů můžete sloučit do jednoho pacienta.

1. Ze seznamu vyberte pacienty, které chcete sloučit.

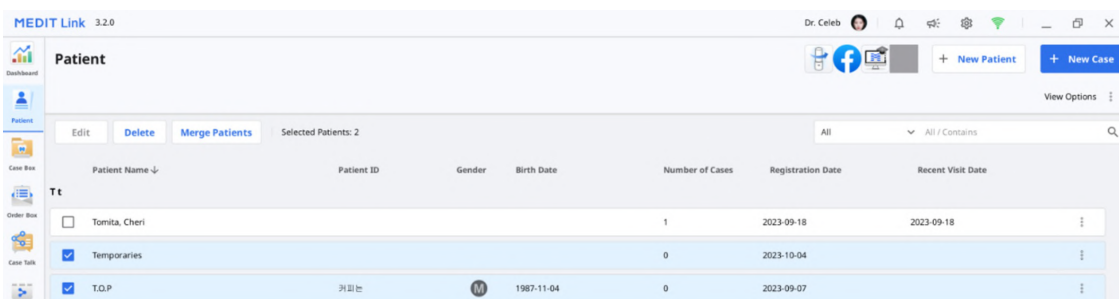

2. Klikněte na „Sloučit pacienty“.
3. Vyberte cílového pacienta, do kterého chcete sloučit všechny případy.
4. Všechny případy budou sloučeny do cílového pacienta a informace o pacientovi pro cílového pacienta budou zachovány.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel
Apply

5. Klikněte na „Použít“ pro pokračování ve sloučení.

Case Box/Work Box

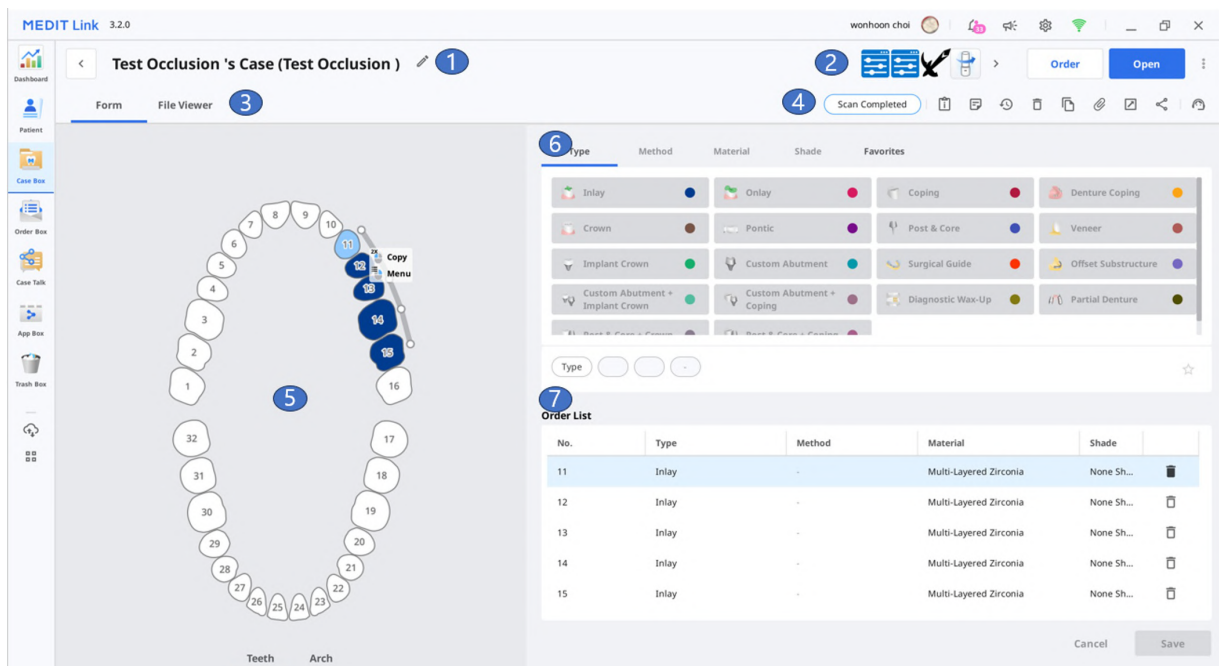

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Získáte dostupné klíčové funkce: tlačítko Skenovat nebo Otevřít, tlačítko Objednat, ikony aplikací.
3	Zobrazí se dostupné karty: Formulář, Prohlížeč souboru.
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů.
5	Zobrazí se uživatelské rozhraní pro registraci formuláře u vybraného skenovacího programu.
6	Poskytněte uživateli informace o typu/způsobu/materiálu/odstínu, které si mohou vybrat pro vybrané číslo zubu.
7	Ukažte informace o typu/metodě/materiálu/odstín, aplikované na vybrané zuby.

Záložky v Case Box/Work Box

Formulář	Prohlížeč souboru
Záložka formuláře poskytuje uživatelské rozhraní pro zadávání základních informací pro skenování, jako je typ, metoda, materiál pro čísla zubů a možnosti skenování. Informace, které zadáte, jsou předány do připojeného skenovacího programu a použity jako informace o objednateli při zadávání objednávky u vašeho partnera.	Prohlížejte si výslední soubory, generované skenovacími programy a CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Funkce v Case Box/Work Box

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující funkce.

	Stav případu	Zobrazí stav případu.								
	Přejít do Order Box/In Box	Poskytuje zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Info o případu	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.								
	Připomínky & Značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případu svým partnerům.								
	Historie případu	Poskytuje detailní informace o historii případu. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Odstranit	Odstranit případ. Nelze odstranit objednané případy nebo případy vytvořené offline.								
	Klonovat	Vytvořte duplikát aktuálního případu v Case Box. Všechna data budou zkopírována do klonovaného případu. Tato funkce pomáhá replikovat informace o léčbě pro stejného pacienta nebo vytvořit další objednávku se stejnými informacemi nebo soubory.								
	Připojit	Připojte soubory v různých formátech.								
	Exportovat	Exportujte soubory s výsledky skenování nebo CAD do lokálního počítače. Při exportu souborů si můžete vybrat preferovaný formát souboru. Exportované soubory lze použít pro další práci v CAD a CAM softwaru.								
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů. Odkaz můžete volně sdílet s kýmkoli nebo pouze s konkrétními lidmi. Pro zabezpečení soukromých informací lze nastavit PIN kód nebo datum vypršení platnosti odkazu.								
	Odeslat žádost o podporu	Přejděte na stránku Centra nápovědy Medit a odešlete žádost o podporu.								

Order Box/In Box

MEDIT Link 3.2.0 | wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Test) | 1

Order | **File Viewer** | 3

2 Cancel Order | **4 Pending**

5

Order ID: 5996137

Patient Name: Occlusion Test | Partner Name: WonhoonChoi_Lab_Stage

Scan Date: 2023-04-20 08:15 | Order Date: 2023-04-20 08:15

Requested Delivery Date: 2023-04-27 | Expected Delivery Date: 2023-04-27

Memo:

Tags:

6

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení).
3	Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů.
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případu, připomínky & značky, atd.
5	Zobrazit podrobné informace o objednávce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky.
6	Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení.

Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace související s objednávkou, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínka a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím Case Talk v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

Poznámka

Služba Case Talk vyžaduje připojení k internetu.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2.***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.

App Box

App Box poskytuje různé doplňkové programy, doplňující váš základní pracovní postup skenování a zvyšující produktivitu. Můžete si stáhnout a nainstalovat dodané aplikace, díky kterým vytvoříte dentální pomůcky, analyzujete naskenovaná data, získáte asistenci při konzultaci nebo zefektivníte váš pracovní proces.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update](#)
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshida)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install](#)
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install](#)
- iie systems connector**: PRIM specialized for orthodontics. [Install](#)
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install](#)
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link. [Install](#)
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshida)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS. [Install](#)

Vše


Karta „Vše“ zobrazuje seznam všech poskytovaných aplikací včetně originálních aplikací vyvinutých společností Medit (Medit Apps) a partnerských aplikací. Jde o integrační aplikace s partnery Medit z různých odvětví digitální stomatology, jako je 3D tisk, CAD/CAM software, atd.

Medit Apps

Karta „Medit Apps“ zobrazuje pouze seznam původních aplikací vyvinutých společností Medit.

Staženo

Karta „Staženo“ zobrazuje seznam aktuálně nainstalovaných aplikací na vašem PC a aplikací, které mají historii stahování uživatelským účtem.

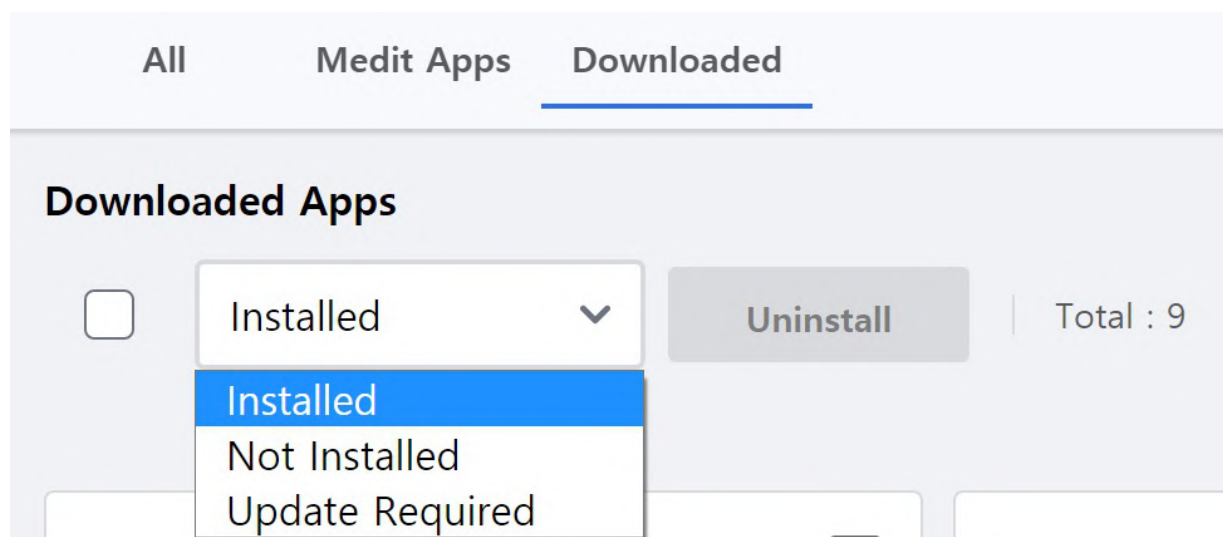

- **Nainstalované:** Tato možnost zobrazí pouze aplikace nainstalované v počítači, ke kterému je uživatel aktuálně přihlášen.
- **Nenainstalované:** Tato možnost vám umožní zobrazit aplikace, které jste nainstalovali do jiných počítačů pro opětovnou rychlou instalaci v případě potřeby.
- **Vyžaduje se aktualizace:** Tato možnost zobrazí pouze aplikace nainstalované v aktuálním počítači s potřebou aktualizace.

Trash Box

Trash Box dočasně ukládá odstraněné případy. Jakýkoli případ v Trash Box lze buď obnovit nebo trvale odstranit.

Pozor

Data, smazaná z Trash Box, budou trvale smazána z vašeho počítače a serveru a nelze je obnovit.

MEDIT Link3.2.0

wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

Restore

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Správce synchronizace případů

Správce synchronizace případů vám pomůže efektivně nahrávat a stahovat případy. Do cloudu můžete nahrát více případů nebo je stáhnout přímo do místního počítače. Pro identifikaci případů vyžadujících synchronizaci - jednoduše je vyhledejte nebo použijte filtry data.

Case Synchronization Manager

Upload Download						
All		Case Name Case Name / Contains				
Total Cases: 210		☒ No Date Data Type All				
☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status	
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required	🔗
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required	🔗
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required	🔗
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required	🔗
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required	🔗
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required	🔗
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required	🔗
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required	🔗
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required	🔗
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required	🔗
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required	🔗

Close

Nahrát

 Upload	Nahrajte vybrané případy.
 Cancel	Zrušte nahrávání pro vybrané případy.
 Retry	Pokud nahrávání selže, zkuste případy nahrát znovu.

Stáhnout


 Download	Stáhněte vybrané případy.
 Cancel	Zrušte stahování pro vybrané případy.
 Retry	Pokud stahování selže, zkuste stahování případů znovu.

Související webstránky

Můžete přejít přímo do menu, dostupného pouze na webu Medit Link, jako jsou My Info, Partners and Membership. Viz Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) a [My info](#) pro podrobné popisy webového menu Medit Link.

Můžete vstoupit do online obchodu Medit, Medit Shop, kde si můžete zakoupit prodloužené záruky na skenery a další zboží Medit, jako jsou například batohy na skenery.

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Centrum nápovědy, Medit Academy YouTube kanál a Medit Academy online vzdělávací platforma.

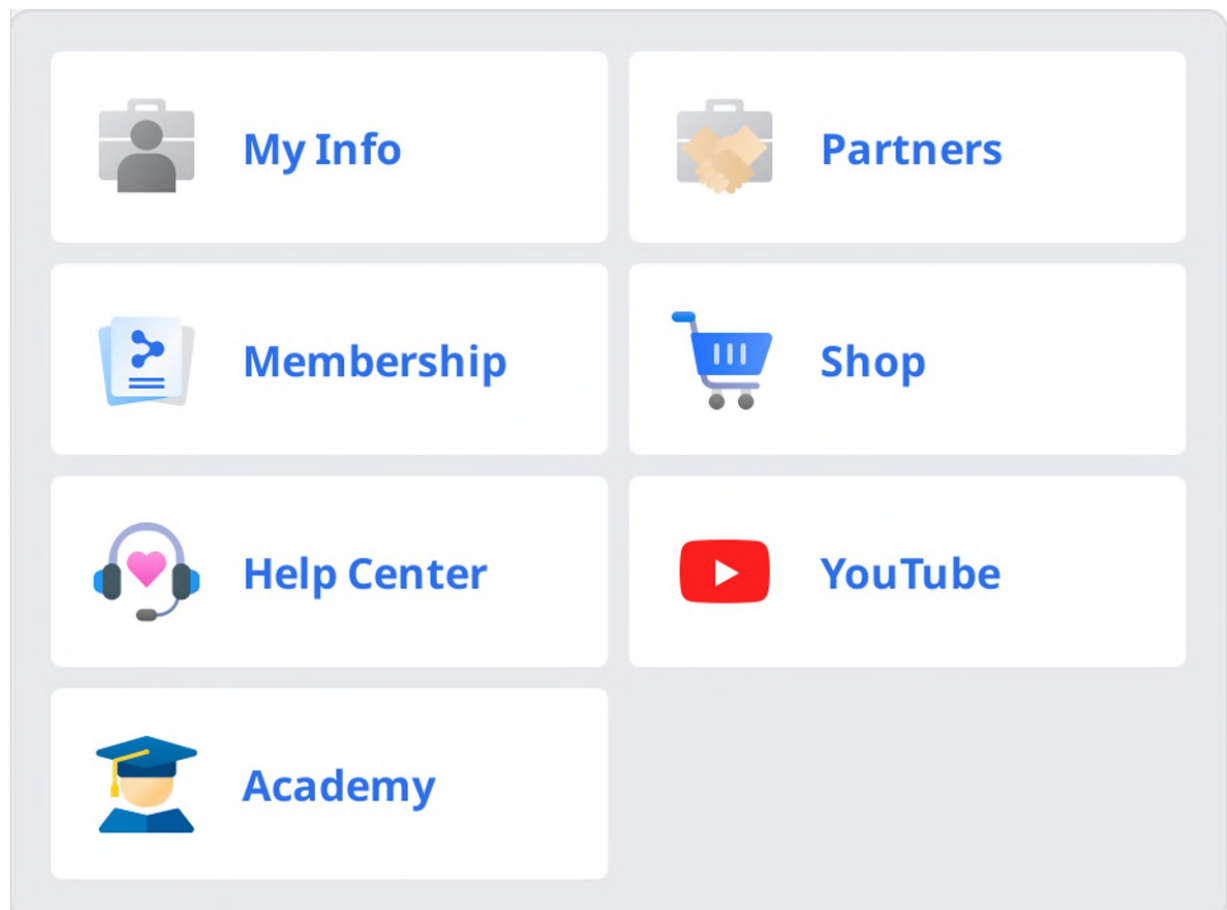

Prohlížeč souboru

File Viewer seskupuje a zobrazuje různá data, včetně dat získaných z programů, propojených s Medit Link a dat připojených uživateli.



Poskytuje základní funkce správy, jako je zobrazení/skrytí dat, úprava opacity a mazání dat.

Podporuje náhledy souborů v následujících formátech:

- 3D data: STL, OBJ, PLY
- 2D obrázky: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video soubory: MKV, MP4, AVI, WMV

Datový strom

Všechna data pro daný případ můžete seskupit a zobrazit v datovém stromu. Můžete také zobrazit/skrýt data, upravit průhlednost a odstranit data ze stromu dat.

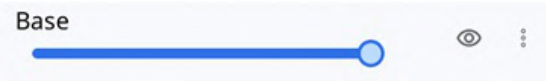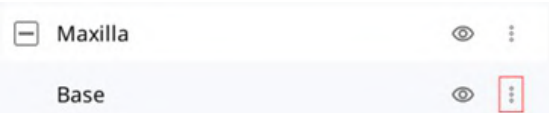
	Zobrazit / Skrýt	Data můžete zobrazit nebo skrýt.
	Opacita	Po kliknutí na jedno z dat v datovém stromu se zobrazí posuvník. Přesunutím posuvníku můžete upravit opacitu zobrazených dat. 
	Více	Klepnutím na ikonu Více zobrazíte další dostupné funkce.  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data, zobrazí pouze odpovídající data. • Skrýt: Skryje data. • Duplikovat: Zkopíruje data a přidá je do skupiny příloh. • Exportovat: Export vybraných souborů. • Přejmenovat: Změnit název dat. • Smazat: Smaže data.



Poznámka

Data můžete přejmenovat v online režimu.

Nástroje pro ovládání modelu

3D ovládání modelu

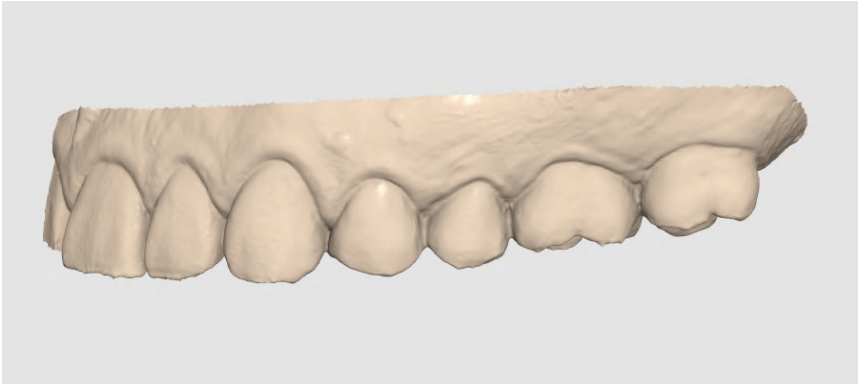+	Panorámovat	Posunout model.
↺	Otočit	Otočit model.
🔍	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
🔍	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicionuje do středu obrazovky.
🌈	Režim zobrazení dat	Zobrazte data barevně s lesklým povrchem (PBR vykreslování). 
🌈		Zobrazte data barevně s matným povrchem (Phong vykreslování). 
●		Zobrazí data v jedné barvě. 

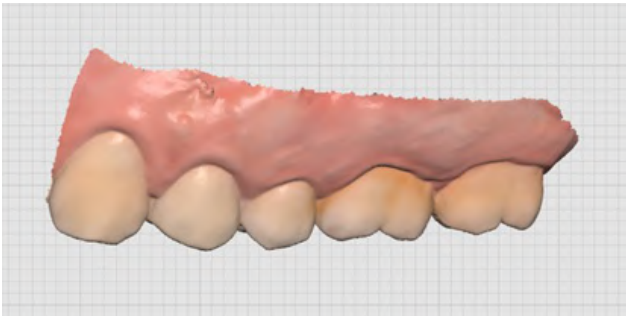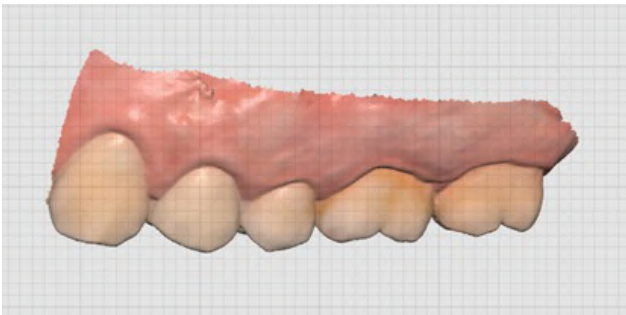	Nastavení mřížky (mm)	Mřížka zapnuta	Zobrazuje mřížku na pozadí. 
		Mřížka vypnuta	Skryje mřížku na pozadí.
		Zapnout potah	Překryjte model mřížkou. 

Ovládání 2D obrázků


 	Další/Předchozí obrázek	Pohybuje se mezi obrázky.
	Upravit	Upravit obrázek.
 	Okno Stažení/Vložení	Okno obrázku můžete odpojit a upravit do požadované polohy. Můžete změnit velikost okna. Když je okno obnoveno do původního umístění, vrátí se do výchozí velikosti.

Funkční nástroje

Zachycení obrázku a Poznámka


Zachyťte aktuální obrazovku jako 2D obrázek, kreslete na něj nebo přidejte poznámky.

Obrázek můžete uložit jako soubor s vašimi poznámkami a odeslat jako referenci.

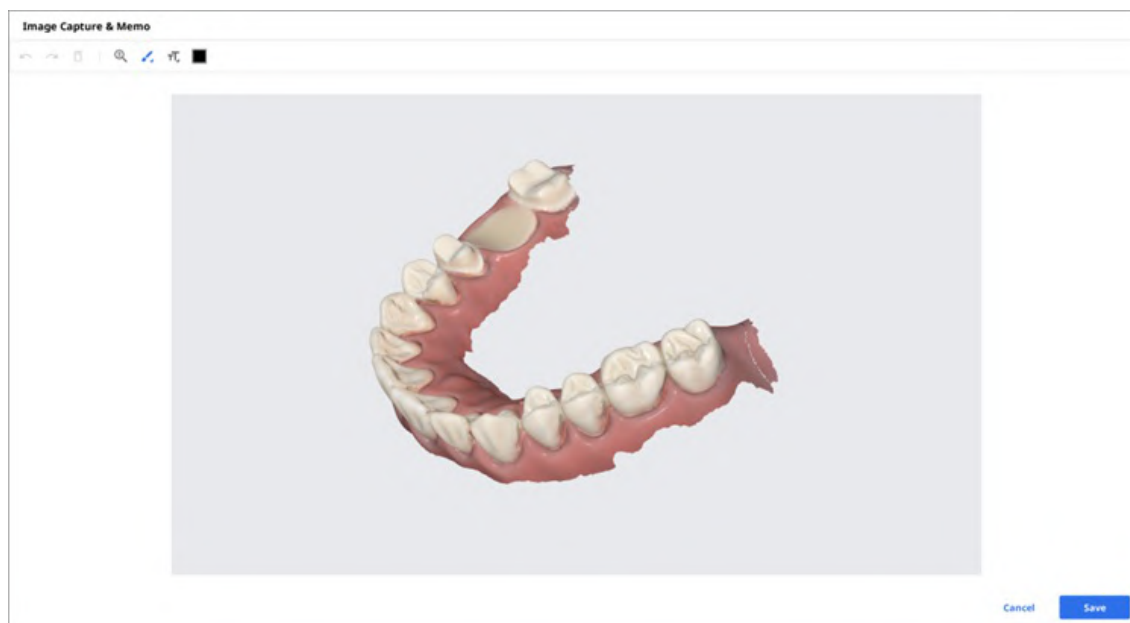

Ortho zachycení


Snímá snímky v aktuálním směru pohledu a také vrchní/spodní/levou/pravou stranu z aktuálního směru pohledu.

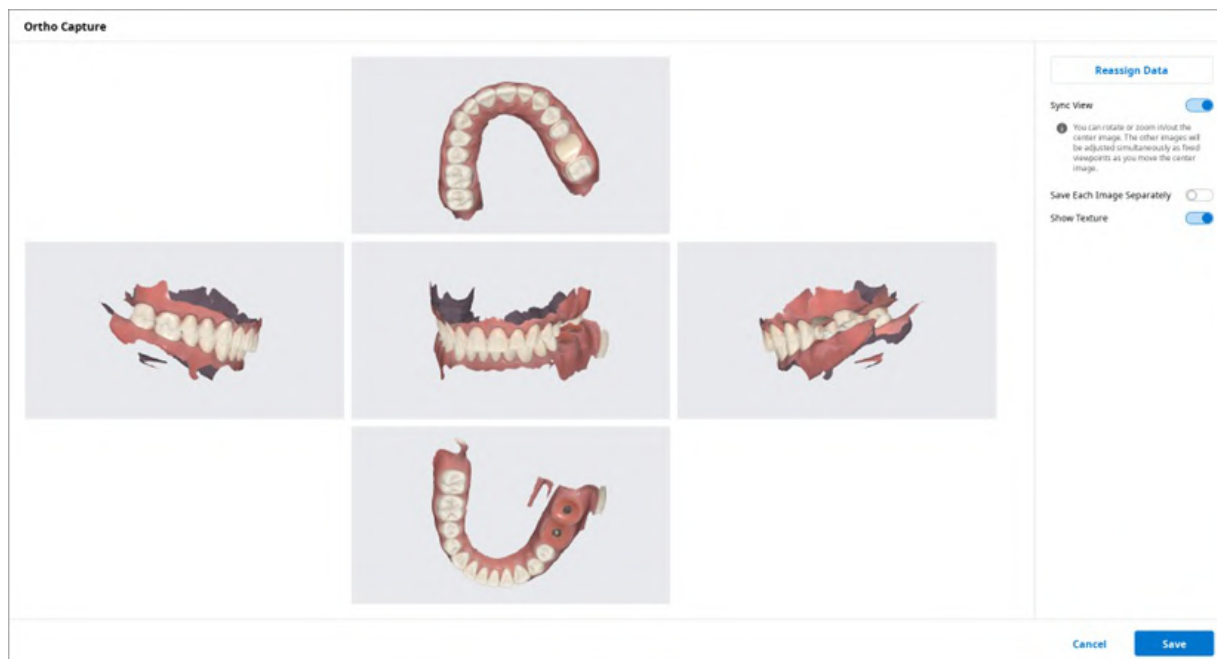

Zobrazení synchronizace	Když je zapnutý, můžete otáčet nebo přibližovat/oddalovat středový obrázek. Když budete pohybovat středovým obrazem, ostatní obrázky budou upraveny současně jako pevná zorná pole. Při vypnutí všechny obrázky můžete panorámovat, otočit nebo přiblížit/oddálit jednotlivě.
Uložit každý obrázek zvlášť	Uložte každý obrázek ve vysokém rozlišení.
Zobrazit texturu	Zapnout/vypnout texturu modelu.
Znovu přiřadit data	Data pro maxillu/mandibulu změníte pomocí funkce Znovu přiřadit data. Změněná data můžete použít k vytvoření a využití výsledných snímků z Ortho zachycení. • Skenovací data: Jsou zobrazena všechna skenovací data pro daný případ. • Maxilla: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro maxillu. • Mandibula: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro mandibulu.


Vyplnit mezery

Vyplnit mezery v datech 3D sítě.

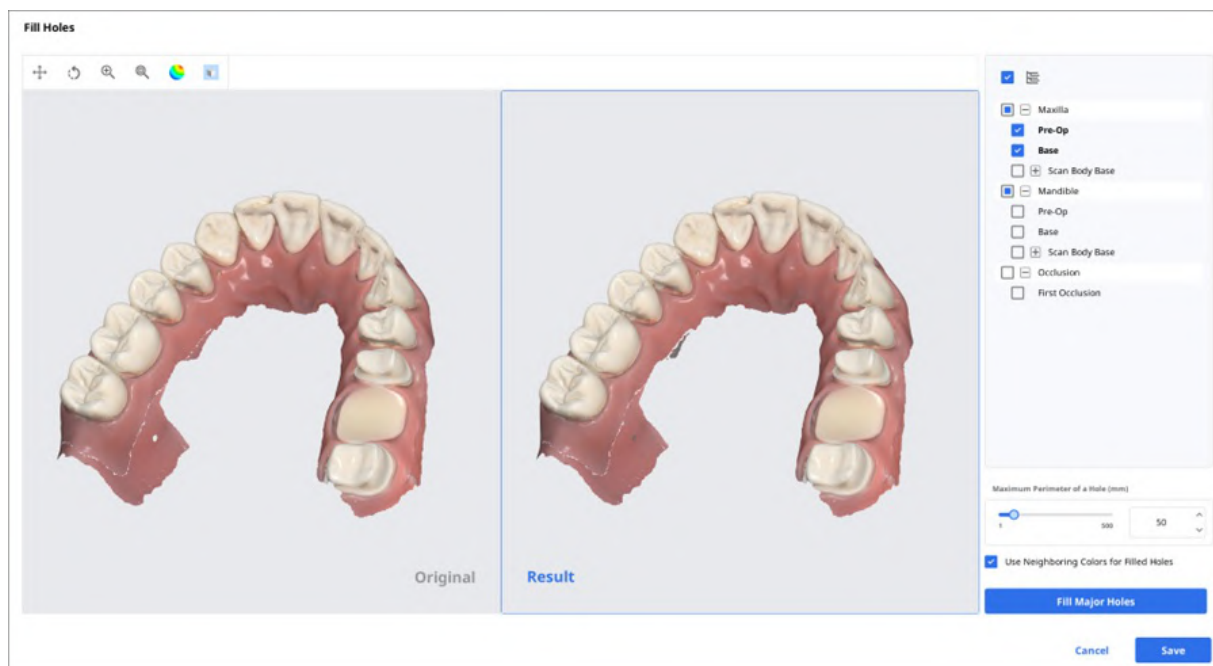

Ořezávání


Ořezávání poskytuje různé nástroje pro úpravu dat.

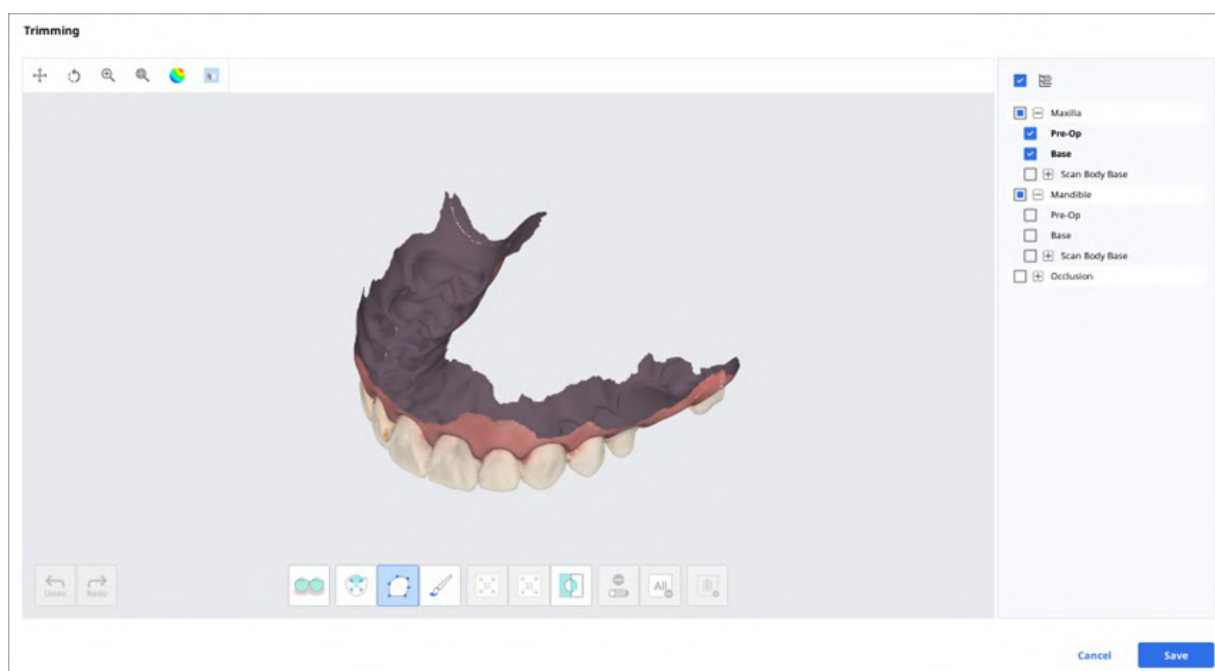

Vybraná 3D mesh data lze upravovat pomocí různých nástrojů, umístěných ve spodní části okna.

Výběr		Chytrý výběr zubů	Automaticky vybere všechny zuby oblouku a vynechá části dásně. Poznámka Tato funkce je k dispozici pouze pro skenovaná data, získána využitím Medit Scan for Clinics se zapnutou možností „Použít GPU“.
		Chytrý výběr jednoho zubu	Automaticky vyberete oblast jednoho zubu kliknutím. Na zub můžete kliknout nebo jej přetáhnout.
		Výběr vícebodové linie	Vybere všechny entity ve tvaru vícebodové křivky, nakreslené na obrazovce.
		Výběr štětce	Vyberte všechny entity na volně nakreslené linii na obrazovce. Bude vybrána pouze přední strana obličeje. Štětec má tři různé velikosti.
Úprava vybrané oblasti		Zmenšit vybranou oblast	Zredukuje vybranou oblast každým zmáčknutím tlačítka.
		Rozšířit vybranou oblast	Rozšíří vybranou oblast při každém stisknutí tlačítka.
		Invertovat vybranou oblast	Invertovat výběr.
Zrušení výběru		Výběr/Zrušení výběru	Při zapnutí zrušíte výběr oblasti pomocí různých nástrojů.
		Vymazat kompletní výběr	Vymaže všechny vybrané oblasti.
		Smazat vybranou oblast	Vymažte data z vybrané oblasti.

1. Vyberte oblast, kterou chcete oříznout, pomocí nástroje výběru oblasti.

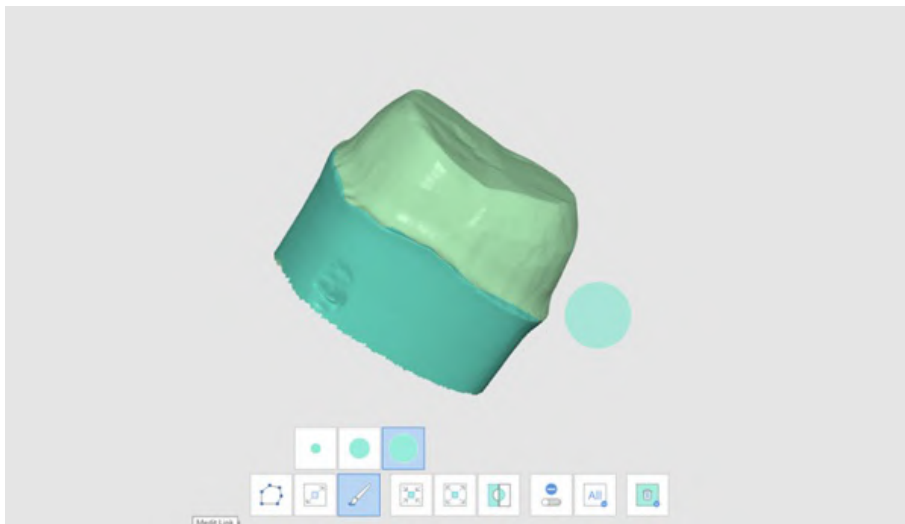


Poznámka


Nástroj ořezání křivkou vybere všechny entity ve tvaru křivky, nakreslené na obrazovce, zatímco ořezání štětcem vybere pouze data přední strany obličejce.

2. Pomocí následujících tří nástrojů můžete výběr invertovat, zmenšit nebo rozšířit.


- Invertovat vybranou oblast

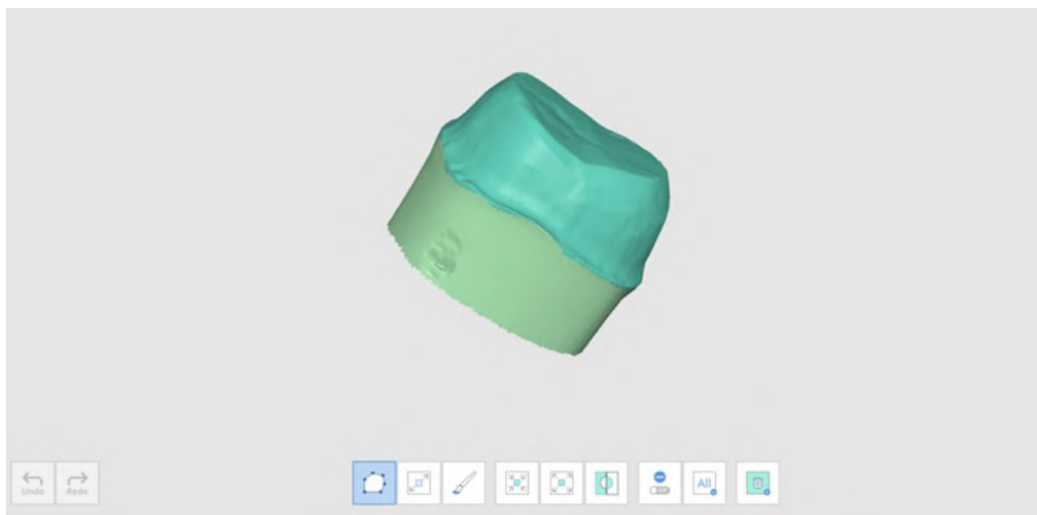

- Zmenšit vybranou oblast

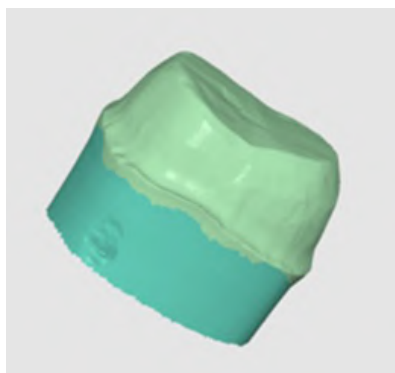

- Rozšířit vybranou oblast

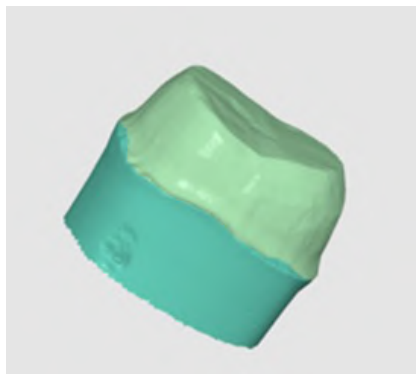


3. Označení vybraných oblastí můžete zrušit pomocí nástroje Smazat vybranou oblast.

Optimalizovat zarovnání okluze

Optimalizovat zarovnání okluze. Můžete si vybrat cílová data a upravit zarovnání okluze.




Úroveň kompenzace

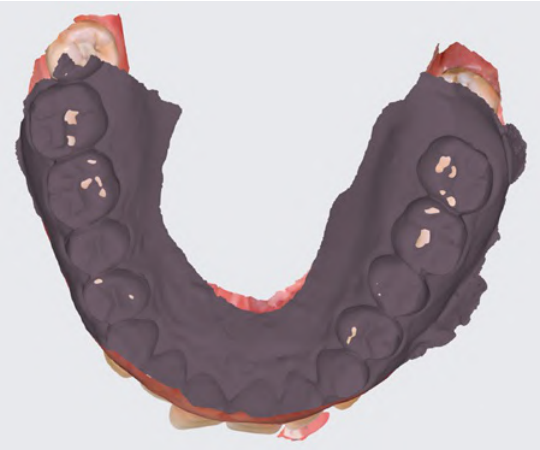Nízká	Compensation Level    	
Střední	Compensation Level    	
Vysoká	Compensation Level    	
Vypnout	Compensation Level    	

Pohyb mandibuly

Můžete si přehrát pohyby mandibuly, zaznamenané v Medit Scan for Clinics, abyste viděli dynamické okluzní kontakty mezi horními a dolními denticemi.

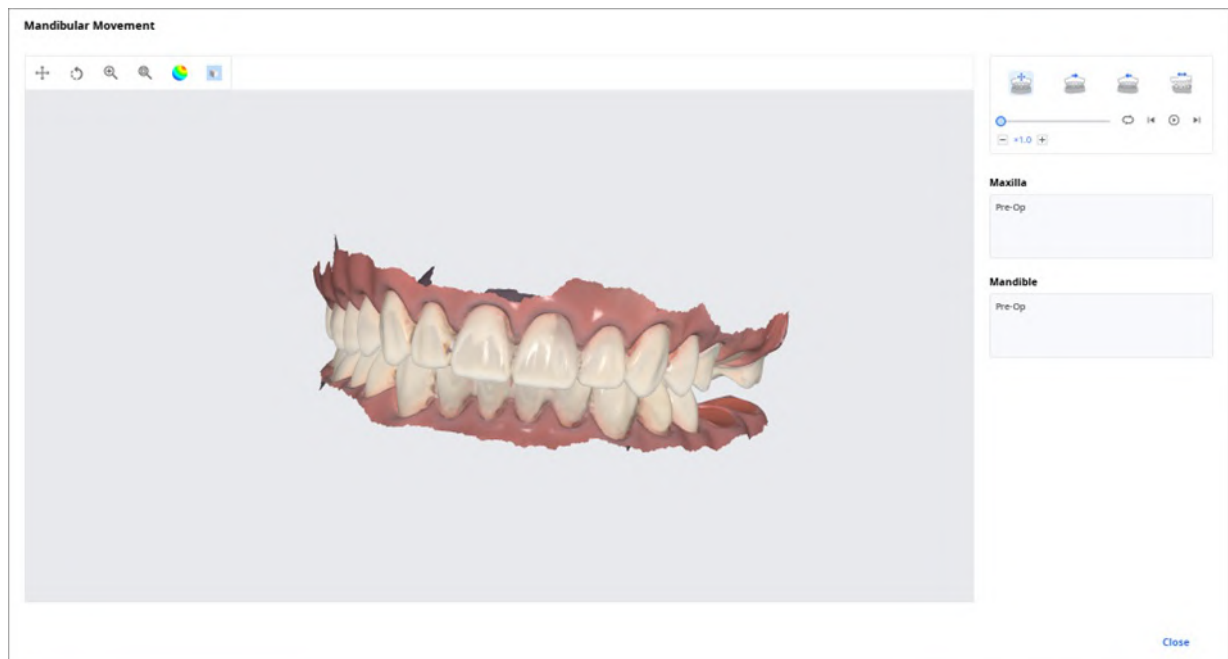

	Volný pohyb	Přehrát záznam volného pohybu mandibuly.
	Levý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doleva.
	Pravý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doprava.
	Protruzivní pohyb	Přehrajte záznam mandibuly, pohybující se vpřed.

Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů

Z aplikace Medit Scan můžete získat více výsledků dat okluze.

Medit Link poskytuje funkci pro správu výsledků prostřednictvím „Prohlížeče souborů“.

Jak spravovat více výsledků


Když uživatel získá více výsledků okluze z Medit Scan for Clinics, Medit Link nabízí možnost vybrat konkrétní výsledek.

Seznam výsledků je uveden podle názvu a můžete vybrat pouze jednu položku.

Vybraný model se zobrazí v „Datovém stromu“ a „Oblasti zobrazení modelu“.



Seznam můžete sbalit a změnit položku využitím ikon šipek.

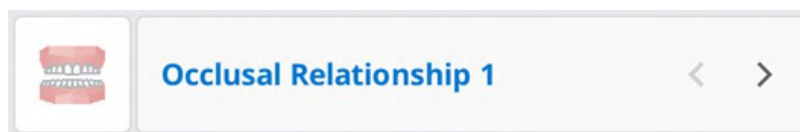

Možnosti zobrazení

Můžete změnit Možnosti zobrazení s cílem přizpůsobit rozvržení seznamu případů v Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

	Status Filters	2 in use >
	Table Items	8 in use >
	View Type	List View >
	Grouping	None >
	Sorting	Last Modified Date >

Filtry stavu

Zobrazí nebo skryje každý filtr, představující stav případu. Skryté stavové filtry se nezobrazují na obrazovce v Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Pomocí filtrů stavu snadno najdete případ, který potřebujete.

- Kliknutím na stav, který chcete zobrazit, zobrazíte pouze případy v tomto stavu.
- Můžete vybrat více stavů najednou.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti filtrování:

Box	Filtry stavu
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Položky tabulky

Vyberte položky, které se mají zobrazit v seznamu případů v Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Můžete změnit pořadí položek tabulky nebo upravit šířku sloupce tabulky v zobrazení do seznamu, abyste co nejlépe optimalizovali tuto funkci pro uživatelské prostředí.

Pro každý box jsou k dispozici následující položky tabulky:

Box	Položky tabulky
Patient	Jméno pacienta / ID pacienta / Pohlaví / Počet případů / Datum registrace / Datum narození / Datum posledního skenování
Case Box	Stav / Název případu / Datum narození / Informace formy / Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
Order Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání / Název laboratoře / Požadované datum dodání / Poslední změna
In Box	Stav / Název případu / Datum objednání / Požadované datum dodání / Poslední změna / Název kliniky
Work Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Informace formy / Poslední změna / Požadované datum dodání / Datum skenování / Název kliniky / Datum objednání

Typ zobrazení

Změňte typ zobrazení mezi Zobrazením galerie a Zobrazením do seznamu v Case Box.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti typu zobrazení:

Box	Možnosti typu zobrazení
Patient	Zobrazení do seznamu
Case Box	Zobrazení do seznamu / Zobrazení galerie
Order Box	Zobrazení do seznamu
In Box	Zobrazení do seznamu
Work Box	Zobrazení do seznamu

Seskupení

Vyberte možnost seskupení pro klasifikaci a změnu uspořádání případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti seskupení:

Box	Možnosti seskupení
Case Box	Žádné / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání
Order Box	Žádné / Datum skenování / Datum objednání / Požadované datum dodání
In Box	Žádné / Datum objednání / Požadované datum dodání
Work Box	Žádné / Požadované datum dodání

Poznámka

Možnosti seskupení nejsou dostupné v Patient, Case Talk a Trash Box.

Seřazení

Výběrem možnosti třídění změníte pořadí případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti třídění:

Box	Seskupení	Možnosti seřazení
Patient	-	Jméno pacienta / ID pacienta / Datum narození / Datum registrace / Počet případů / Datum posledního skenování
Case Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
	Jméno pacienta	Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum skenu	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Název laboratoře
Order Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Datum skenu	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenování / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
In Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenování / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum objednávky / Název kliniky
Work Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Poslední změna / Název kliniky


Poznámka

Možnosti seřazení nejsou dostupné v Case Talk a Trash Box.

Filtrování a vyhledávání


Filtrovat podle pacienta

Filtrovat a zobrazit případy podle jména pacienta. Můžete vytvořit seznam vyfiltrováním pouze pacientů, se kterými potřebujete pracovat.

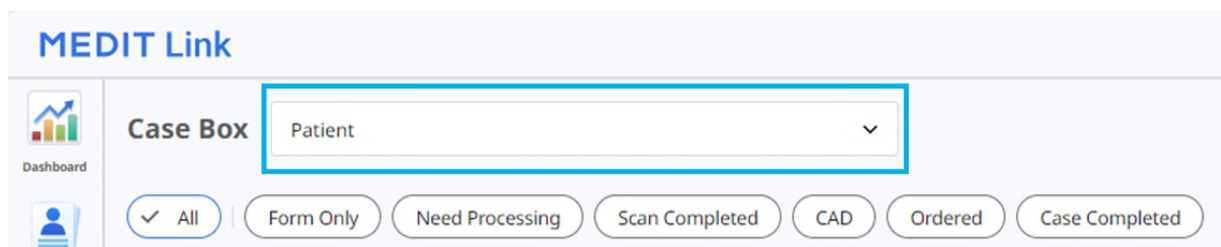

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user profile icon. The main area has a 'Case Box' section with a dropdown menu currently showing 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (with a checkmark), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Zadejte jméno pacienta.

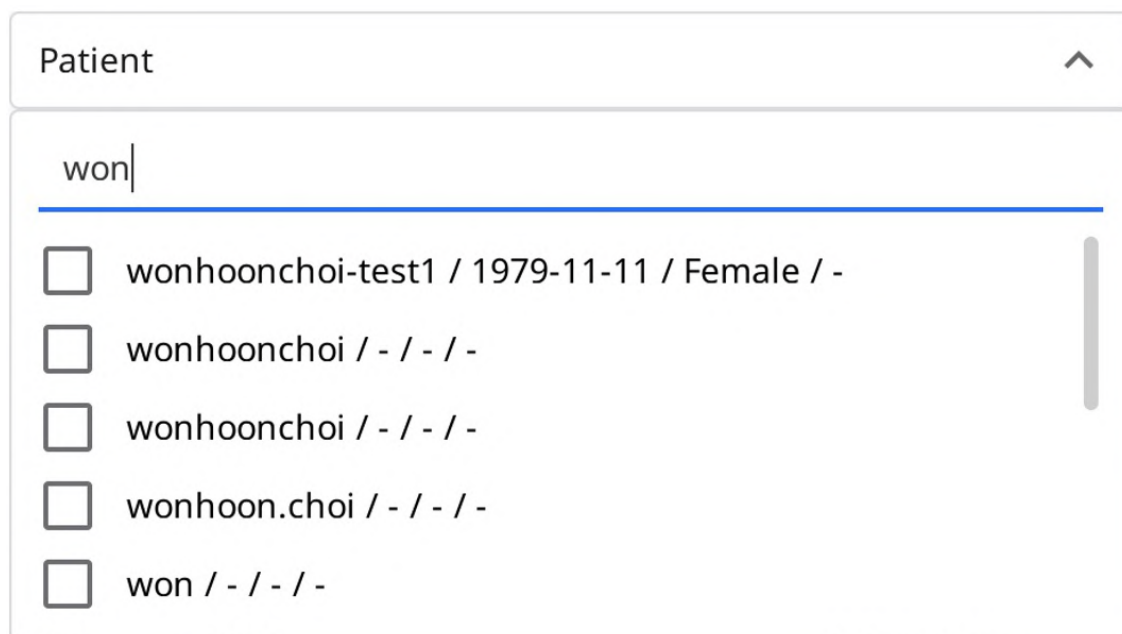

This screenshot shows the expanded dropdown menu from the 'Case Box' section. The search input at the top contains 'won'. Below the input, there is a list of five patient entries, each preceded by an unchecked checkbox. The entries are: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

2. Vyberte pacienty z výsledků vyhledávání níže.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -
 ☒ wonhoon.choi / - / - / -
 ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. V seznamu jsou zobrazeny pouze případy Vybraných pacientů.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrovat podle data

Filtrujte a zobrazte případy, které byly naposledy upraveny během nastavené doby.

1. Klikněte na filtr doby.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Vyberte dobu trvání ze seznamu.

- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, naposledy upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené včera.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v předchozích 7 dnech, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v posledních 30 dnech, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Rozšířené možnosti vyhledávání

Využijte možnosti vyhledávání k rychlému nalezení požadovaných informací.

All

▼

Search / Contains

Q

Pro každé pole jsou k dispozici následující Vyhledávání kritérií:

Patient	Vše, Jméno pacienta, ID pacienta
Case Box	Vše, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Informace formy, Název laboratoře
Order Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře, ID objednávky
In Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky
Work Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Informace formy, Název kliniky, ID objednávky
Case Talk	Název Case Talk (obsahuje), Jméno pacienta (rovná se)
Trash Box (Klinika)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název laboratoře, Smazáno kým
Trash Box (Laboratoř)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, Smazáno kým

Můžete vybrat Kritéria vyhledávání a vybrat si mezi logikou Obsahuje a Rovná se.

All

▼

All / Contains

Q

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ

Vytváření případů

Vytvořte případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

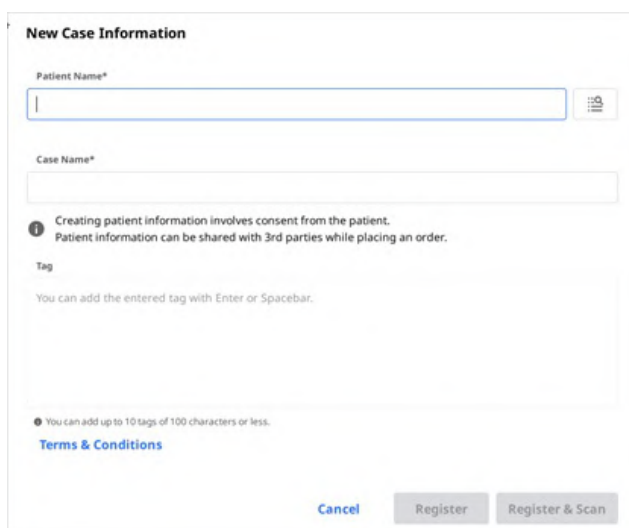


2. Zadejte základní informace, jako je jméno pacienta a název případu.

- Pokud zadáte jméno, které není na seznamu pacientů, bude přidán nový pacient.
- Pokud zadáte jméno, které je v seznamu pacientů, můžete jej vybrat ze seznamu.
- Pokud registrujete případ pro existujícího pacienta, klikněte na ikonu Seznam pacientů a vyberte existujícího pacienta.



- V dialogovém okně Seznam pacientů můžete zaregistrovat nového pacienta nebo upravit informace o existujícím pacientovi.

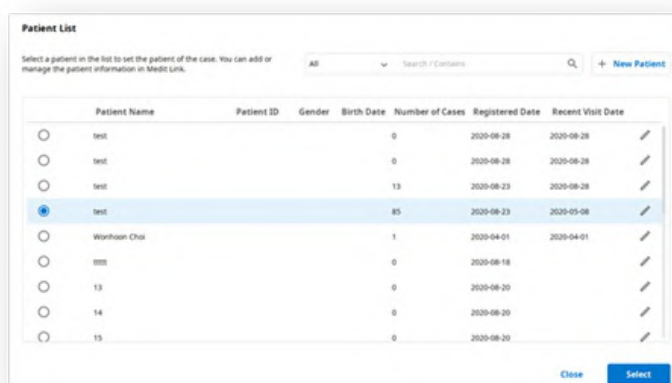

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

3. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Stiskněte „Registrovat & Skenovat“ pro dokončení registrace případu a pokračujte ve skenování.
 - **Registrovat:** Budete přesměrováni na hlavní stránku. Je to užitečné při registraci více případů.
 - **Registrovat&Skenovat:** Přejděte na záložku Formulář a zaregistrujte informace formy pro daný

případ.

Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Zadejte nebo vyberte název kliniky.
3. Zadejte jméno pacienta a název případu. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Zadejte očekávané datum dodání s ohledem na datum dokončení práce.
5. Po registraci případu budete přesměrováni na hlavní stránku.

Úprava případů

Upravit případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

- Klikněte na ikonu „Hledat“ a změňte jméno pacienta. Všimněte si, že jej nelze upravovat přímo; místo toho můžete najít jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího a upravit informace o pacientovi ze seznamu.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Zkontrolujte jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího pacienta.
- Pro vytvoření nového pacienta stiskněte tlačítko „Nový pacient“.
- Pomocí tlačítka "Upravit" můžete změnit registrované informace o pacientovi.
- Klikněte „Použít“ pro dokončení procesu.

Upravit případy v Work Box (Laboratoř)

- Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Po dokončení úprav stiskněte „Použít“.

Poznámka

Nemůžete upravovat informace o případech, přijatých prostřednictvím objednávky v In Box.

Klonování případů

Klonování případu v Case Box (Klinika)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Budete dotázáni, jaký druh informací byste chtěli naklonovat do nového případu.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Vyberte, zda chcete replikovat pouze informace formy nebo data všechna dohromady.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.

Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Duplikujte všechna data pro vytvoření nového případu.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.


Odstranění případu

Smazat případ (Klinika a Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Smazat“.



2. Kliknutím na „OK“ případ odstraníte.

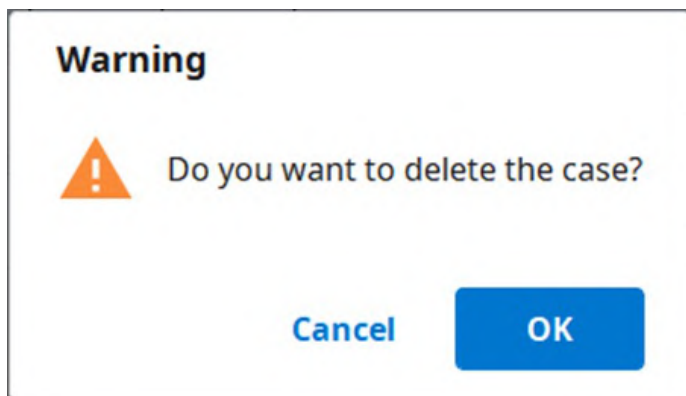

3. Odstraněné případy se přesunou do Trash Box a v případě potřeby je lze obnovit.

Informace formy

Informace formy můžete zadat na základě připojeného programu a typu léčby.

Zadané informace budou použity jako základní informace pro práci na skenování nebo CAD programech a objednávání.

Registrace informací formy v Case Box

Zadejte je na záložce Formy

1. Vyberte, zda chcete zadávat informace o léčbě podle zubů nebo podle oblouku.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
3. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Registrace informací formy v Work Box

Zadejte je na záložce Formy


1. Vyberte skenovací program, který chcete použít.
2. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování: Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody se mohou lišit v závislosti na zvoleném skenovacím programu.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zuby	O	O
Oblouk	O	O
Flexibilní Multi-die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Vyberte pro skenovací proces čísla zubů, oblouků nebo matric die.
5. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.
6. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Připojení zubů do můstku

Když je stejný materiál aplikován na více sousedních zubů, můžete spojit více zubů do můstku. Kliknutím na ikonu můstku vedle vybraných zubů je spojíte nebo odpojíte.

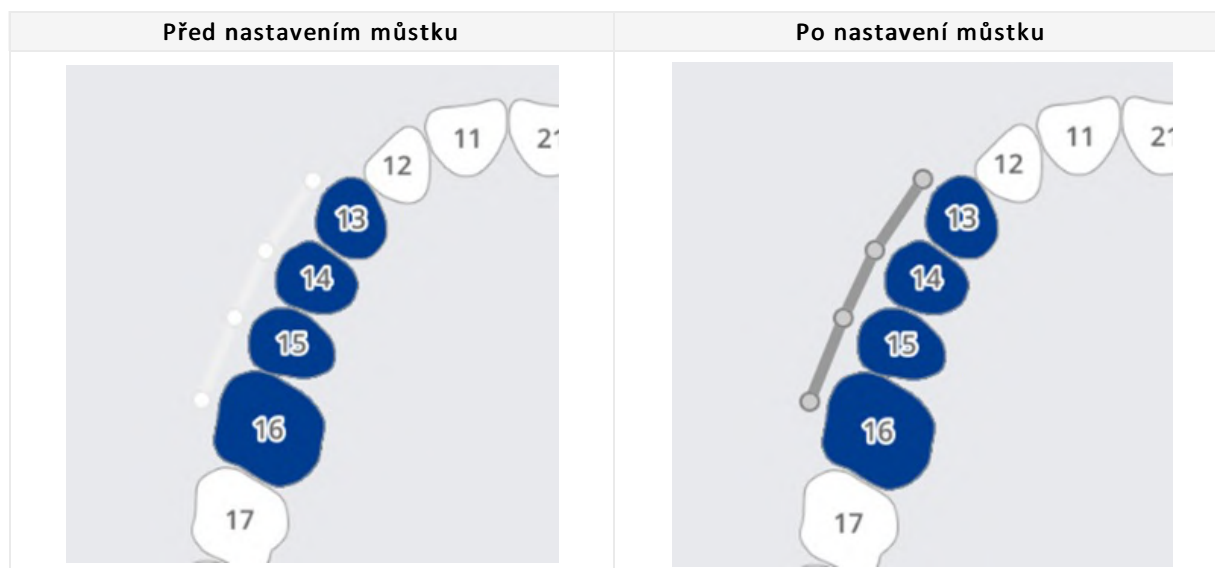

Nastavení možností skenování

V závislosti na programu, se kterým pracujete, jsou k dispozici různé možnosti skenování.

Vybrané možnosti skenování jsou obsahem každého skenovacího programu.

Medit Scan for Labs

Obecné možnosti

	Sousedící zub	Označte připravené a sousední zuby, předejte tyto informace skenovacímu programu.
	Antagonista	Automaticky označit antagonistu a předat tyto informace skenovacímu programu.
	Artikulátor	Zobrazovací možnosti pro výběr artikulátoru v skenovacím programu.
	Značka pohybu	Umožnit použít v skenovacím programu skenovací strategii „Pohyb čelistí“.

Možnosti podle zubů

	Skenování	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování samotné.
	Předoperační sken	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování předoperačního modelu.
	Wax-Up sken	Umožňuje nastavení strategie v programu skenování pro skenování wax-upu.

Přidání k Oblíbeným

Produkt můžete rychle vybrat tak, že jej zaregistrujete jako oblíbený.

Seznam registrovaných oblíbených položek je spravován jako šablona a lze jej sdílet prostřednictvím funkcí exportu a importu.

Přidat do Oblíbených

1. Zvolte číslo zubu.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Typ – Metoda – Materiál – Odstíny lze zaregistrovat jako oblíbené, i když nejsou vybrány všechny z nich.
3. Klikněte na ikonu „Hvězdička“.

4. Kombinace vybraných parametrů, s výjimkou čísla zubu, je uvedena ve vašem vyhledávacím oblíbeném seznamu.

Spravujte oblíbené šablony

Můžete registrovat, spravovat a sdílet různé typy šablon.

Přidat	Přidat novou šablonu.
Přejmenovat	Přejmenovat aktuální šablonu.
Odstranit	Smazat aktuální šablonu.
Exportovat	Exportovat aktuální šablonu do souboru.
Importovat	Importovat soubor šablony.

Práce na skenování/CAD

Proces skenování

Na základě zadaných informací pokračujete ve skenování.

1. Zadejte/uložte informace o léčbě a vyberte potřebné možnosti skenování.
2. Klikněte na tlačítko „Skenovat“ v pravém horním rohu okna.

Proces CAD


Medit Link poskytuje integrační aplikaci DentalCAD pro propojení Medit Link s DentalCAD.

1. Nainstalujte DentalCAD Integration aplikaci do App Boxu.
2. Přejděte na detaily případu a klikněte na ikonu DentalCAD Integration aplikace v Rychlém spouštění.
3. Ve vyskakovacím dialogovém okně zadejte cestu k DentalCAD aplikaci nainstalované na vašem PC.
4. Zadejte podrobnosti o naskenovaném případě a klikněte na ikonu DentalCAD Integration aplikace. Ta zobrazí dialogové okno pro vytvoření souboru dentalProject.
5. Zaregistrujte informace formuláře pro DentalCAD a otevřete CAD program kliknutím na „Otevřít“.
6. Pokud si nainstalujete DentalDB Integration aplikaci, výsledky CAD se automaticky doručí do zadané cesty pro uložení v exocad. (pouze účty laboratoře)


Použití doplňkových aplikací

Přidání Rychlého spouštění

Různé doplňkové aplikace je možné spouštět přímo kliknutím na ikony nainstalovaných aplikací v Rychlém spouštění. Pořadí ikon aplikací můžete jednoduše změnit jejich přetažením.

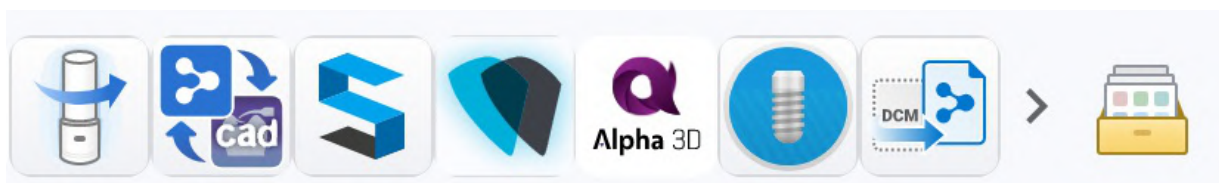

Správa spouštění aplikací

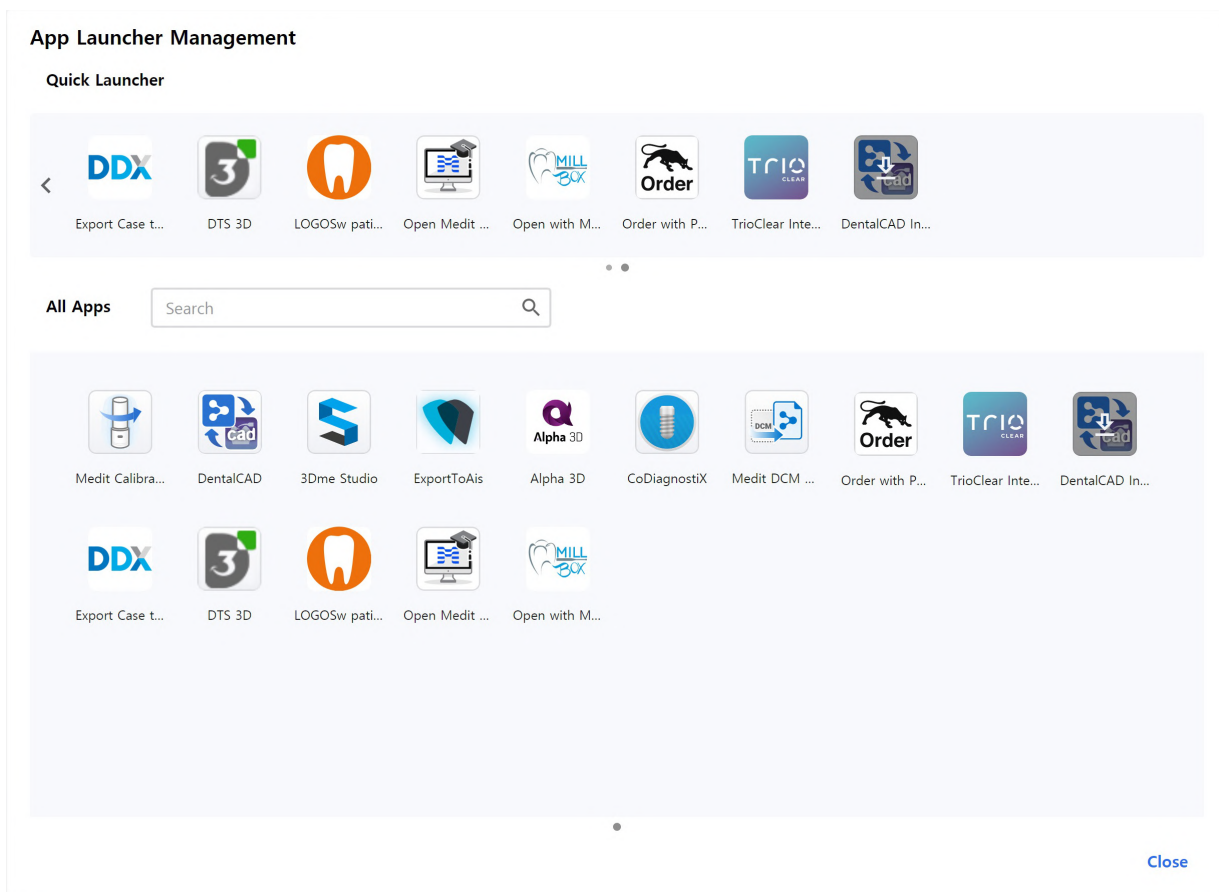

Rychlé spouštění

Můžete zadefinovat, které aplikace se zobrazí v Rychlém spouštění. Pořadí ikon aplikací můžete změnit jejich přetažením, případně můžete vytvořit složky, do kterých podobné aplikace seskupíte a uspořádáte je.

Všechny aplikace

Zobrazí se všechny již vámi nainstalované aplikace. Můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a přidat tak aplikaci do sekce Rychlé spouštění. Pravým tlačítkem myši můžete také vybrat z kontextové nabídky spuštění, instalaci nebo odinstalování aplikace.

Získání souborů s výsledky

Export souborů s výsledky skenování

Kromě sdílení výsledků s partnery prostřednictvím objednávek - Medit Link vám umožňuje ukládat vaše soubory s výsledky v požadovaném formátu souboru pomocí funkce exportu.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit soubory s výsledky.
Název složky	Systém vytvoří novou složku a uloží do ní všechny soubory s výsledky. Výchozí název složky je nastaven pravidlem pro pojmenování. Název složky však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat v Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název složky.
Název souboru	Nastavit název souboru pro výsledek. Pravidlo pojmenování nastavuje výchozí název souboru. Název souboru však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat pomocí Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název souboru
Typ	Vyberte program pro design, který chcete použít. Medit Link automaticky nastaví soubory podle vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v designu bez nutnosti dalšího zarovnání os.
Mesh formát	Určit formát souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat soubory	Zkomprimovat všechny výsledky do jednoho souboru.
Kombinovat individuální struktury	Kombinovat výsledek maxilly nebo mandibuly s jednotlivými zuby. Jde o užitečnou funkci, když není možné importovat do programu několik souborů.
Exportovat všechny okluzní vztahy	Když je z aplikace skenování vygenerováno více výsledků okluze, můžete exportovat všechny tyto výsledky okluze najednou.
Uložit Info o případě jako PDF	Uložte informace o případě jako PDF s výsledkem.

Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů

Soubory s výsledky jednoho případu nebo více případů můžete exportovat současně pomocí možnosti „Exportovat“ nad seznamem případů v Case Box a Work Box.

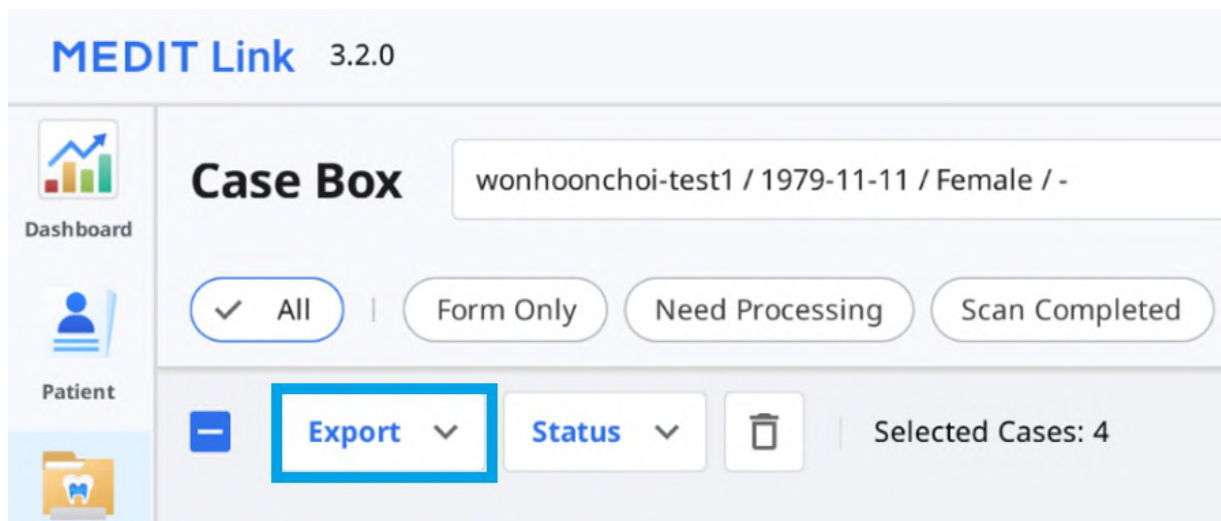

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Vyberte ze seznamu všechny případy, pro které chcete exportovat soubory s výsledky.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Klikněte na „Exportovat“ a vyberte „Soubory s výsledky“.

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Nastavte cílovou složku, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Poznámka

Pole „Název složky“ a „Název souboru“ nelze upravovat při exportu souborů pro více případů. Název složky a název souboru se automaticky vytvoří podle pravidel, která jste nastavili pro „Pravidlo pro název složky“ a „Pravidlo pro název souboru“ v Nastavení > Možnosti exportu.

- Klikněte na „Exportovat“.
- Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru

Soubory výsledků skenování pro konkrétní případ můžete exportovat pomocí ikony „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souboru.

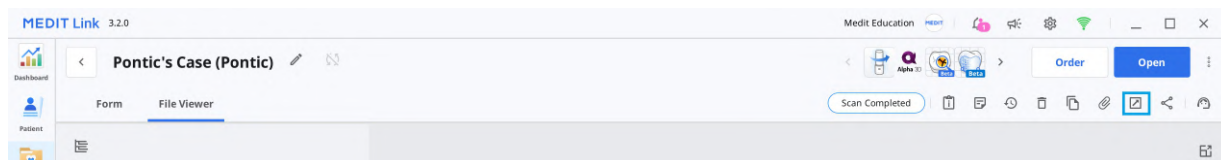

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souboru.



4. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close
Export

5. Na kartě „Seznam souborů“ můžete vybrat požadované soubory pro případ zrušením výběru nepotřebných.

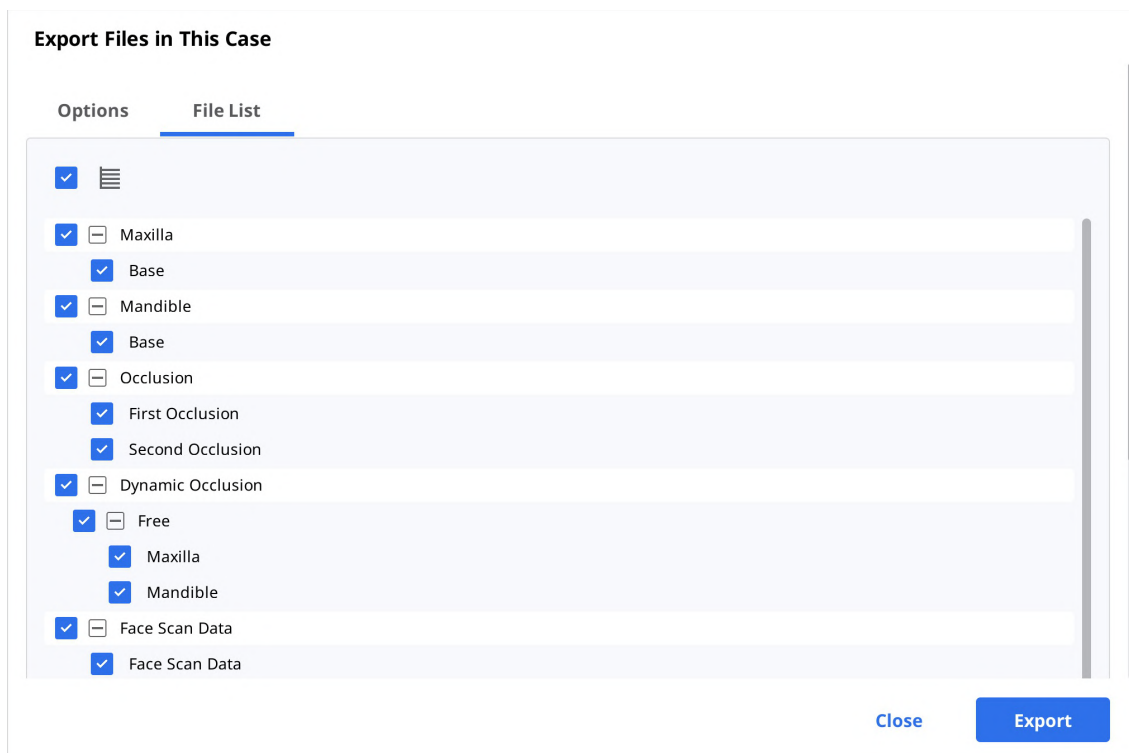


6. Klikněte na „Exportovat“.

7. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

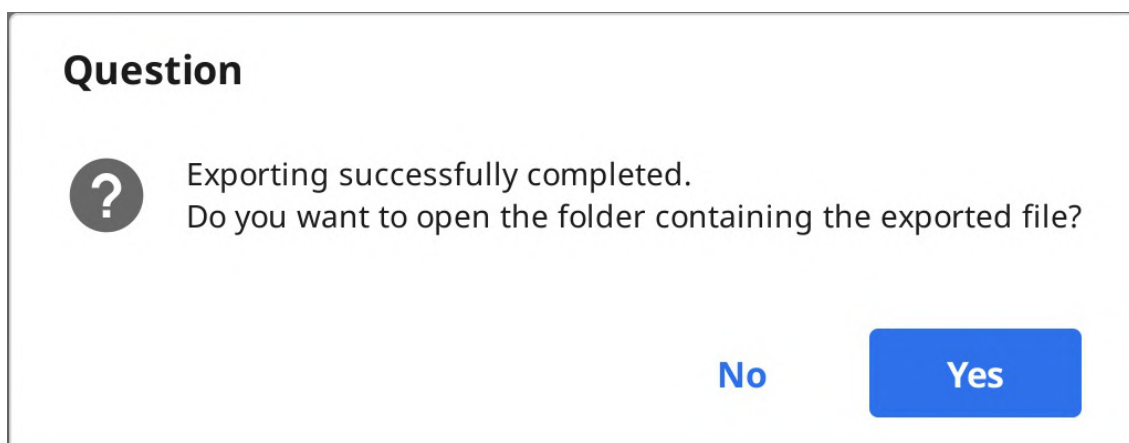

Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu


Z rozbaleného menu v prohlížeči souborů můžete exportovat soubor nebo soubory v konkrétní skupině dat.

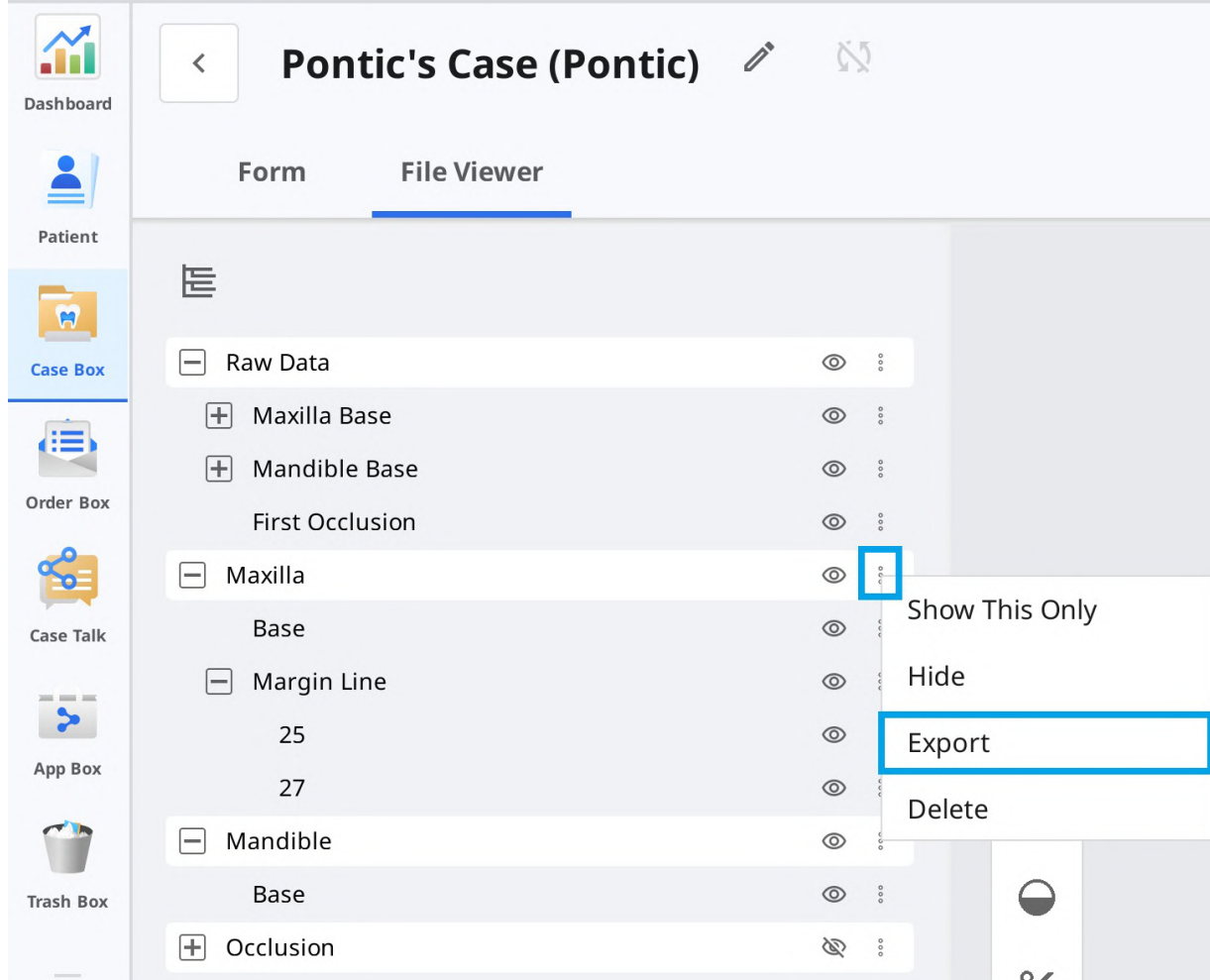

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu tří teček vedle skupiny dat nebo entity v datovém stromu na kartě Prohlížeč souboru.



4. Poté klikněte na „Exportovat“.

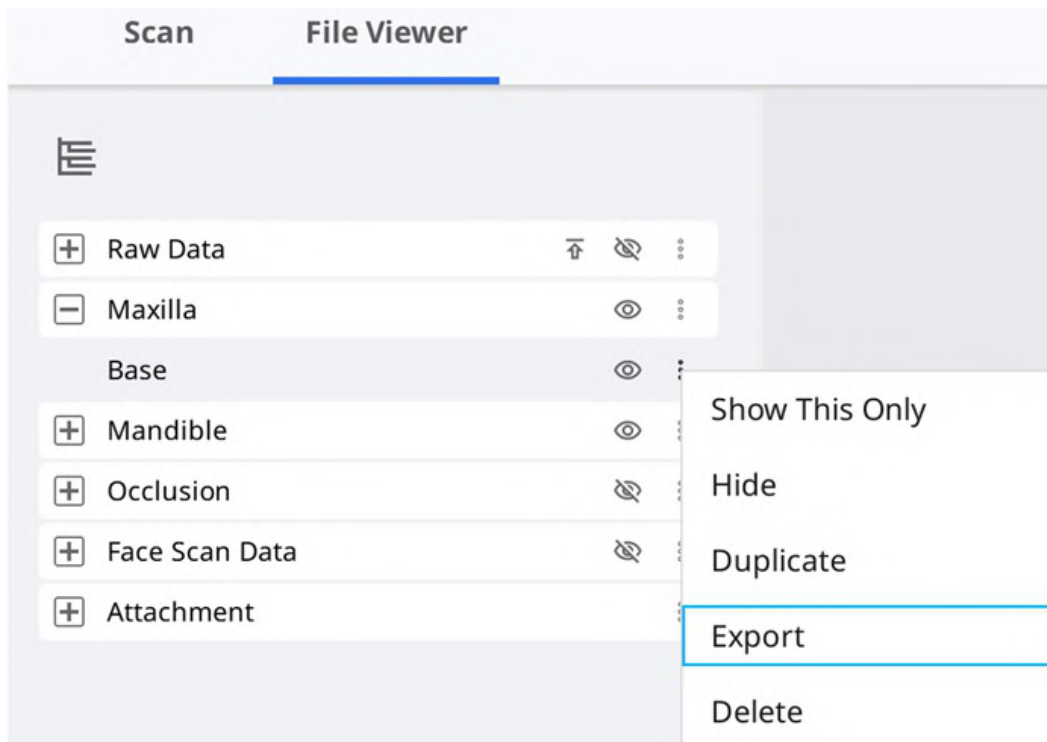

5. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Můžete vidět pouze soubory, které jste vybrali v datovém stromu, ty jsou vybrány v Seznamu souborů.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Klikněte na „Exportovat“.

8. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportovat Seznam případů jako CSV

Medit Link poskytuje funkci pro export seznamu případů ve formátu CSV.

Můžete exportovat seznam případů se základními informacemi a následně snadno spravovat případy.

1. Přejděte do Case Box, Order Box, In Box nebo Work Box.
2. Vyberte případy, které chcete exportovat.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
☒ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
☒ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Klikněte na „Exportovat“ a vyberte „Seznam případů (jak je zobrazen)“ nebo „Seznam případů (se všemi položkami)“.

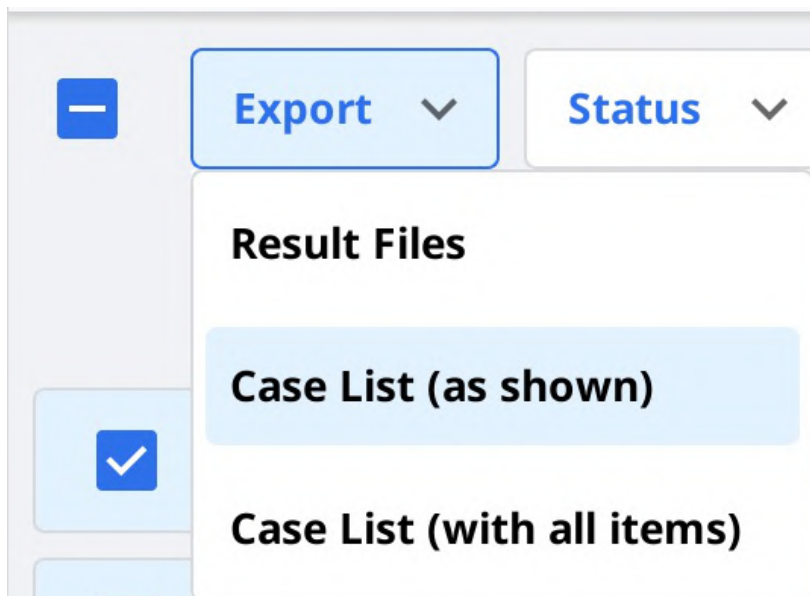

Poznámka

Seznam případů (jak je zobrazen): Exportujte seznam případů s aktuálně zobrazenými položkami na obrazovce. Přejděte na Možnosti zobrazení > Položky tabulky pro zobrazení nebo skrytí položek, jak si přejete.

Seznam případů (se všemi položkami): Exportujte seznam případů se všemi položkami, včetně stavu, názvu případu, data narození, informací formy, data poslední úpravy, data skenování, data objednávky a názvu laboratoře.

4. Definujte cestu a název souboru, poté seznam uložte.
5. Seznam případů se uloží jako CSV soubor.

Export hranice preparace


Medit Scan for Clinics poskytuje funkci pro vytvoření hranice preparace a Medit Link může přenést hranici preparace do CAD programu.

Exportovat hranici preparace jako barvu

Obecně platí, že Medit Link překonvertuje hranici preparace jako barvu a exportuje výsledek společně s maxillou nebo mandibulou. V CADu můžete vytvořit hranici preparace, odkazující na informace o barvě.

Příklad:

Maxilla

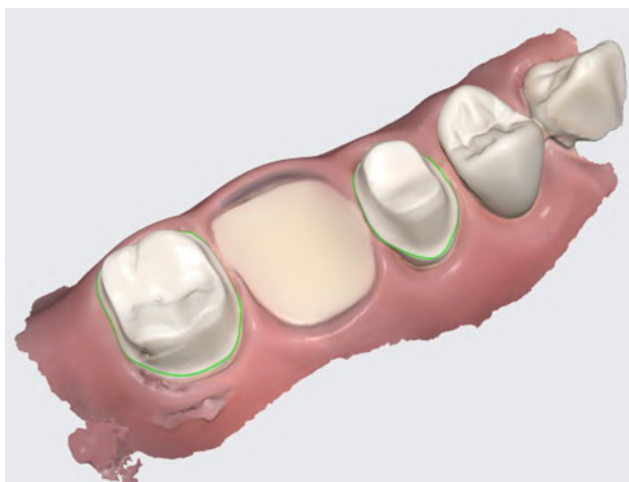

Výsledek s hranicí preparace jako informace o barvě

Poznámka

Tato funkce je dostupná pro formáty, které obsahují informace o barvě, jako je meditMesh, OBJ, PLY. Hranice preparace se nepřevádí na STL.

Poznámka


Typ > 3Shape nepodporuje tuto funkci.

Exportovat hranici preparace jako soubor

V případě exocadu Medit Link exportuje hranici preparace do „~margin.xyz“, který lze importovat přímo do exocad.

Tento soubor můžete použít v exocadu bez dalšího zpracování.

Příklad:

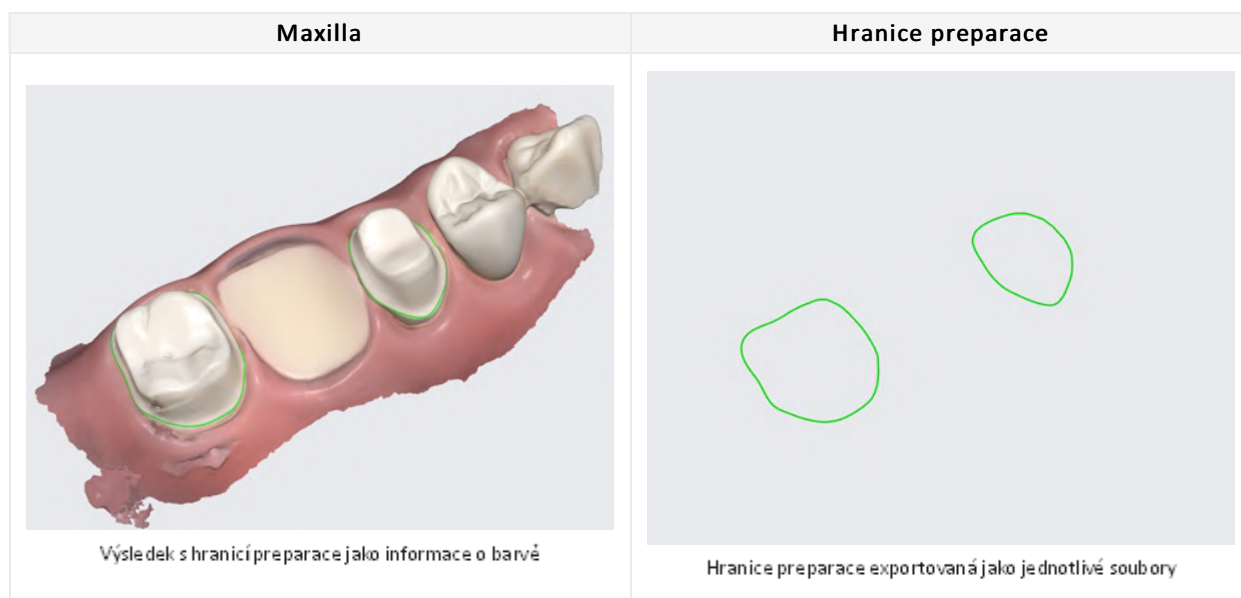

Stáhnout soubory z webstránky Medit Link

Medit Link poskytuje funkci stahování.

Pokud chcete získat výsledné soubory bez instalace aplikace Medit Link, můžete si soubory stáhnout z webové služby Medit Link.

Poznámka


Ke stažení souborů z webu by data měla být nahrána na Medit Cloud.

Funkce stahování je dostupná v následující nabídce webové služby Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Tlačítko „Stáhnout“ najdete vpravo nahoře.

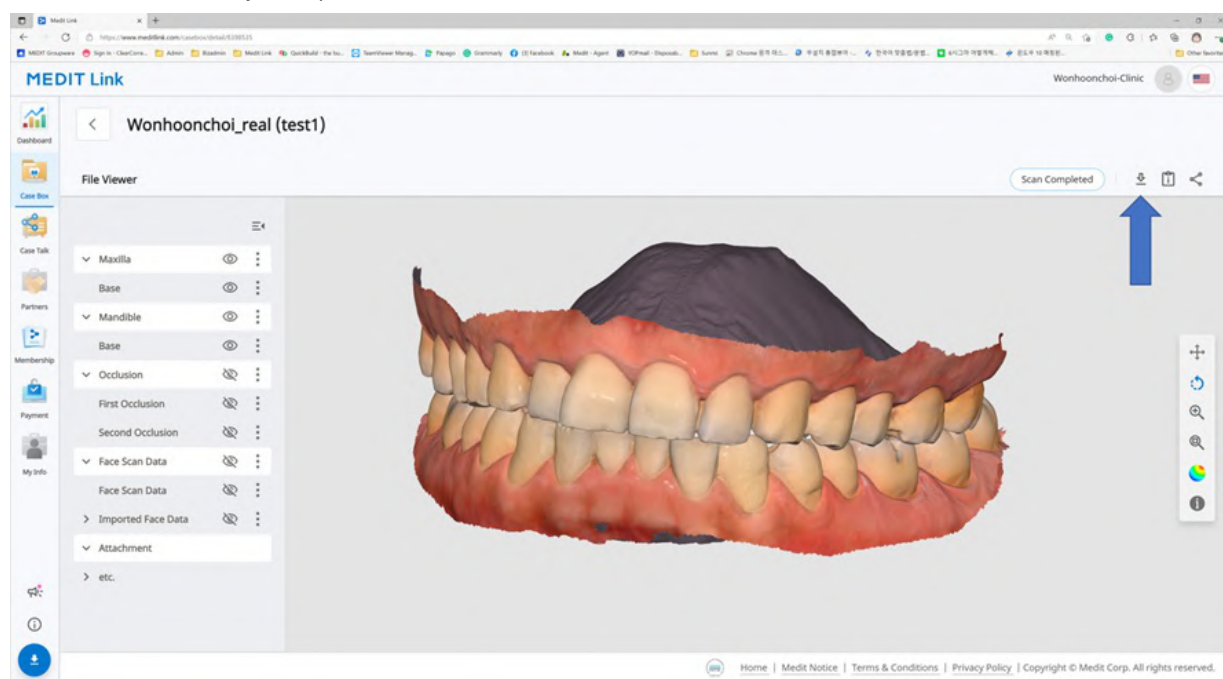

Web Viewer

Když sdílíte případ pomocí Case Talk, můžete nastavit, zda povolit stahování nebo ne.

Pokud zaškrtnete políčko „Udělit oprávnění ke stažení“ a sdílíte případ, mohou si soubory stáhnout všichni uživatelé, kteří se připojí ke sdílenému odkazu.

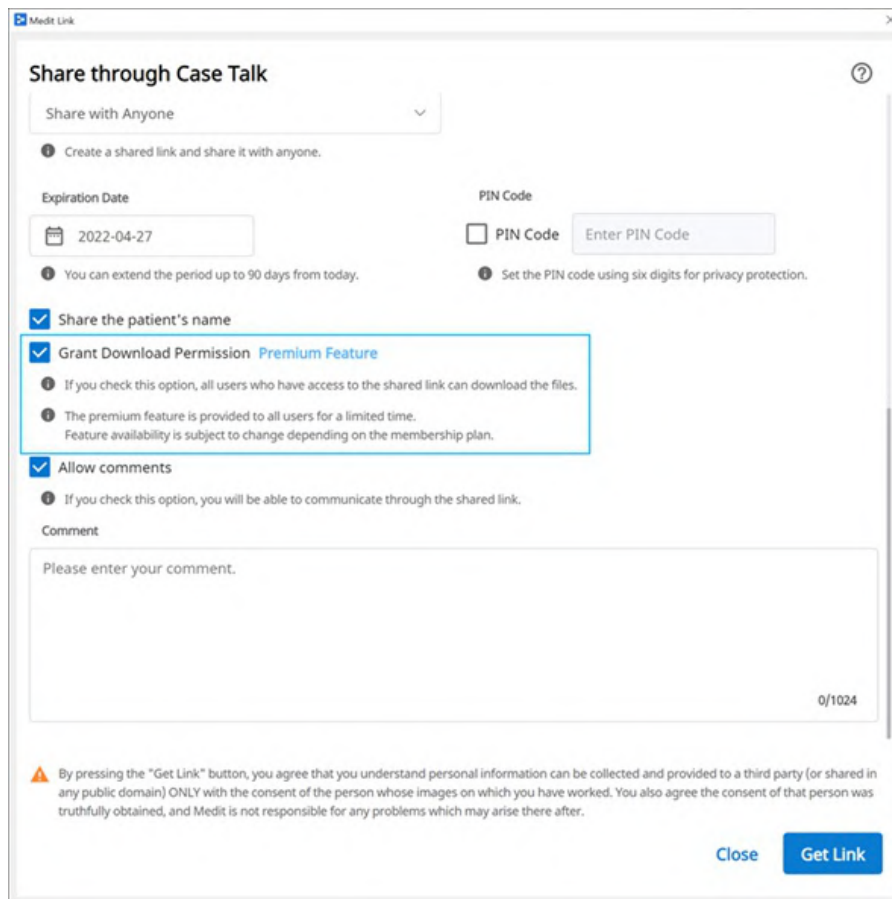

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

Ve Web Viewer najdete ikonu „Stáhnout“ vpravo nahoře.

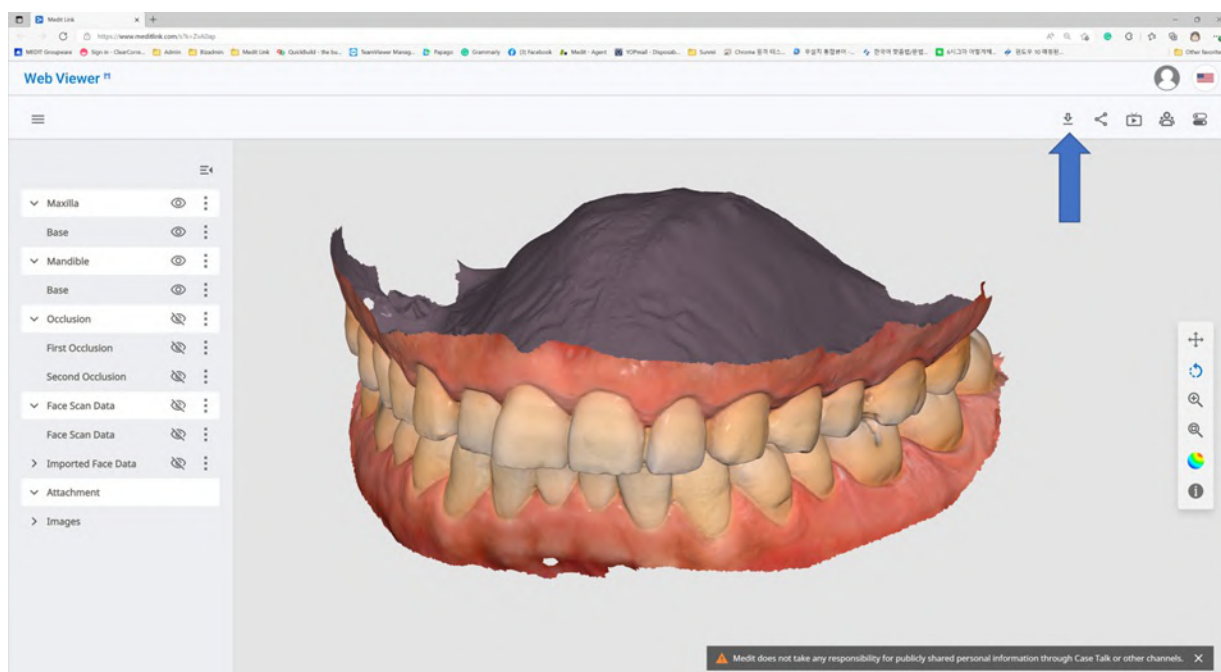

1. Klikněte na „Stáhnout“.



2. Vyberte mesh formát sítě z dialogového okna stahování.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Poté klikněte na „OK“.

133

Objednávka/Správa objednávek

Snadno si můžete objednat případ s daty získanými z připojených programů a připojenými uživatelem.

Objednávání případů

Objednávku pro své partnery můžete zadat v Case Box.

1. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
2. Zkontrolujte informace požadované pro vaši objednávku.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel


OK

3. Zvolte partnera.
4. Zkontrolujte informace o produktu na záložce Seznam objednávek.
 - Můžete se rozhodnout, zda chcete sdílet jméno pacienta.
5. Zkontrolujte soubory k objednání na kartě Seznam souborů.
6. Zadejte požadované datum doručení.
 - Výchozí hodnota je nastavena na 7 dní od data objednávky.
7. K vašemu partnerovi můžete přidat poznámku a připomínku pro konkrétní podrobnosti.
8. Když se z aplikace skenování vygeneruje více výsledků okluze, můžete odeslat všechny výsledky okluze najednou zaškrtnutím možnosti „Objednat všechny okluzní vztahy“.

9. Pokračujte v objednávce.

Potvrdit objednávku (In Box)

- Přijměte objednávku po jejím obdržení.
- Přijaté objednávky budou předány do Work Box.

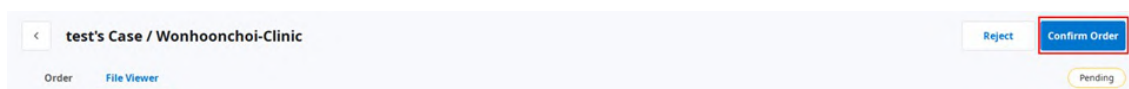

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic


Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Zrušit objednávku (Order Box)

- Objednávku můžete zrušit dříve, než ji váš partner přijme.
- Zrušené případy lze objednat znovu.

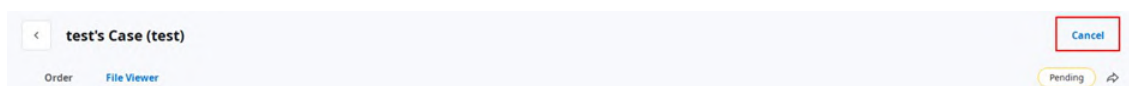

test's Case (test)


Order File Viewer

Cancel

Pending

Odmítnout objednávku (In Box)

- Přijatou objednávku můžete odmítnout.
- Odmítnuté případy lze objednat znovu.

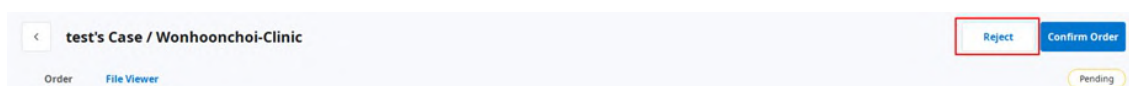

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic


Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Kontrola objednaných případů

Detaily o objednaném případě můžete zkontrolovat v Order Box v účtu kliniky. Můžete také zkontrolovat obdržení případ v In Box v účtu laboratoře.

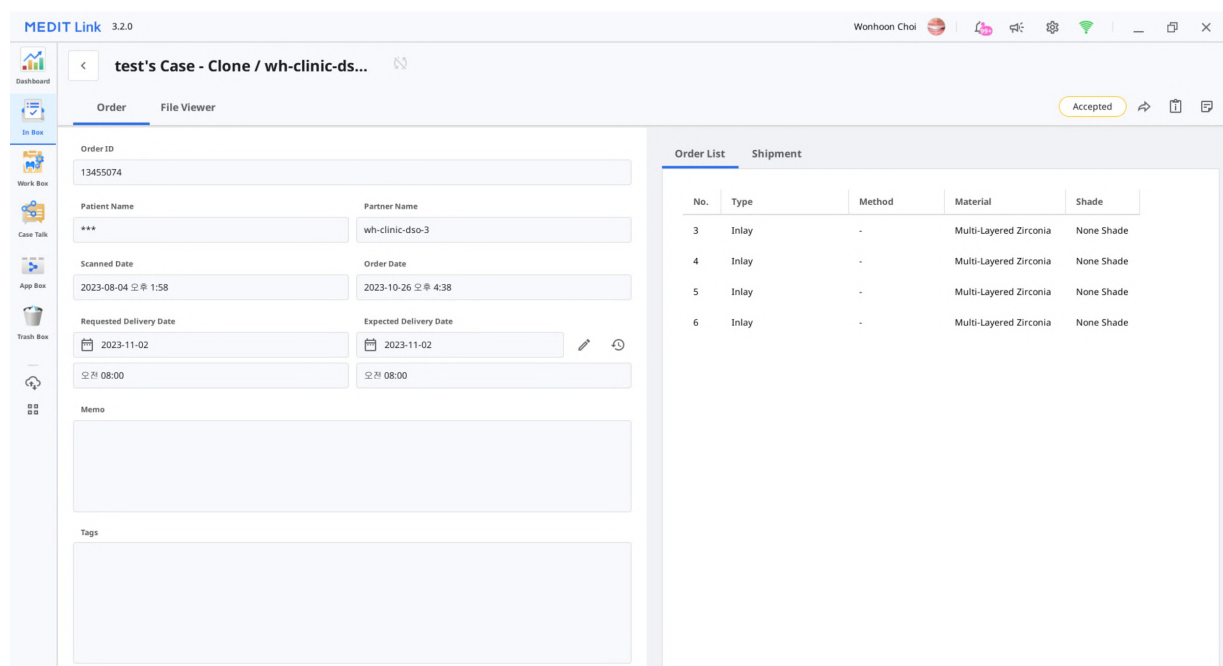

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi

test's Case - Clone / wh-clinic-ds...

Order File Viewer

Accepted

Order ID: 13455074

Patient Name: *** Partner Name: wh-clinic-dso-3

Scanned Date: 2023-08-04 08:15:58 Order Date: 2023-10-26 04:38

Requested Delivery Date: 2023-11-02 Expected Delivery Date: 2023-11-02

08:00 08:00

Memo

Tags

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Info o objednávce	Informace, které lze zahrnout do objednávky, jsou následující: ID objednávky/jméno pacienta/název účtu/datum skenování/datum objednávky/datum doručení/datum doručení/poznámka. Můžete zkontrolovat detaily o objednaném produktu a informace o dodání.
Seznam objednávek	Seznam objednávek zobrazuje detaily o objednaném produktu.
Odeslání	Zadejte/zkontrolujte informace o odeslání.

Zadání informací o doručení (In Box)

Zadejte informace o doručení pro dokončený případ a začněte odesílat.

1. Klikněte na záložku „Doručení“.
2. Zadejte informace o zásilce a klikněte na „Registrovat“.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Zadané informace budou odeslány vašemu partnerovi.

Správa data doručení

Při zadávání objednávky můžete nastavit předpokládaný termín dodání a tato informace bude předána vašemu partnerovi.

Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)

- Při objednávce z Case Box můžete zadat požadované datum dodání.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel **OK**

- Výchozí hodnota je 7 dní od data objednávky.
- Zadejte datum/čas, kdy chcete produkty obdržet a pokračujte v objednávce.
- Čas můžete snadno nastavit pomocí posuvníku.

Nastavit očekávané datum doručení (Účet laboratoře)

- Můžete zadat očekávané datum doručení pro případ, objednaný z In Box.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject **Confirm Order**

Pending

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total **KRW 0**

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10


1. Ověřte si u partnera požadovaný termín dodání a přeplánujte jej pomocí tlačítka „Upravit“.



2. Zadejte očekávané datum doručení s ohledem na aktuální pracovní den. V případě potřeby můžete také

zanechat komentář.

3. Klikněte na „Použít“.

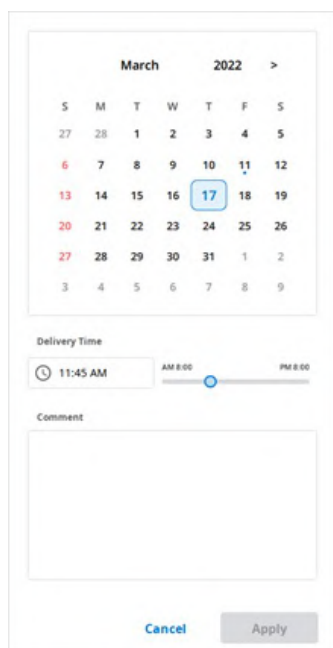

4. Předpokládaný termín dodání a připomínka budou zaslány společně s objednávkou.

- Datum a připomínky můžete zkontrolovat v Order Box.
- Předpokládané datum doručení můžete změnit a tyto změny budou předány vašemu partnerovi.

5. Historii případů můžete zkontrolovat pomocí tlačítka „Historie“.



Dokončování případu

Dokončit (Work Box/In Box)


Po dokončení všech úkolů dokončete práci na případě kliknutím na tlačítko „Hotovo“.

Dokončete případ z detailu případu

Ikonu tří teček najdete vpravo od tlačítka „Otevřít“ nebo „Skenovat znovu“.




Dokončete práci kliknutím na ikonu a výběrem „Done“.

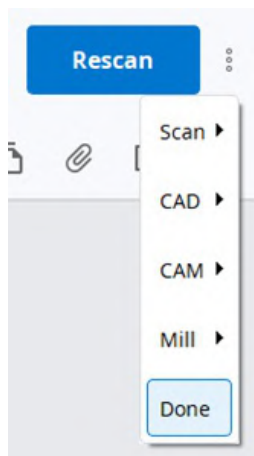

Dokončit více případů ze seznamu případů

1. Přejděte do Work Box.
2. Vyberte všechny případy k dokončení.

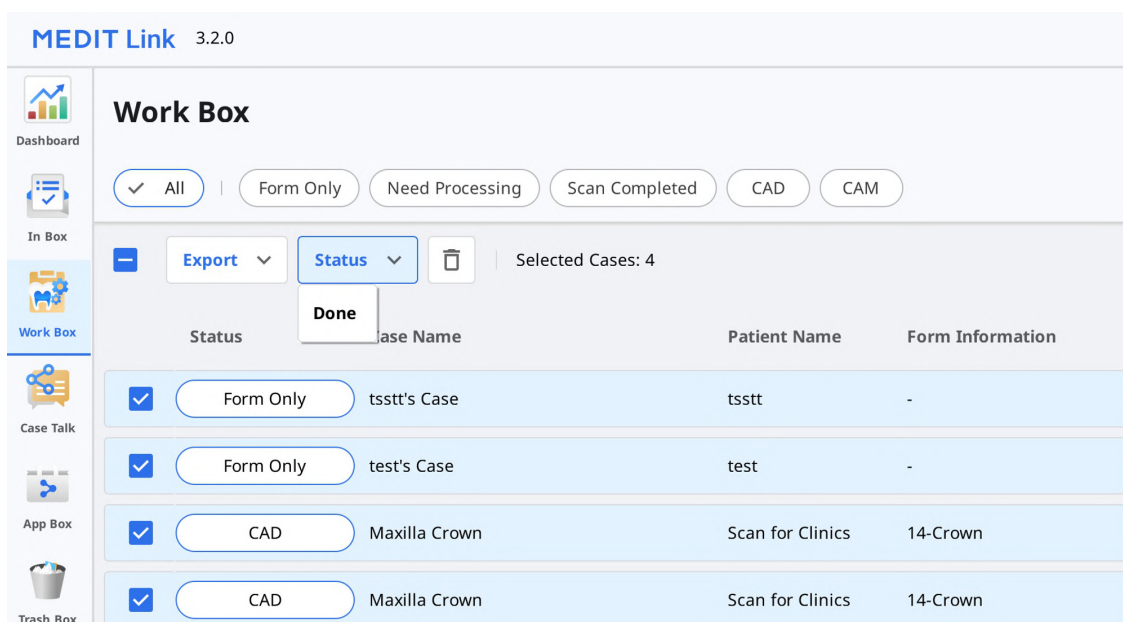


3. Klikněte na „Stav“ a vyberte „Done“.

Dokončit (Case Box/Order Box)

Po dokončení případu na straně laboratoře musí klinika případ potvrdit pro kompletizaci celého případu objednávky.

Pokud laboratoř dokončí svou práci, může klinika najít tlačítko „Potvrdit doručení“ v poli Order Box.

Kliknutím na toto tlačítko se celý proces objednávky dokončí a stav případu se změní na „Case Completed“.

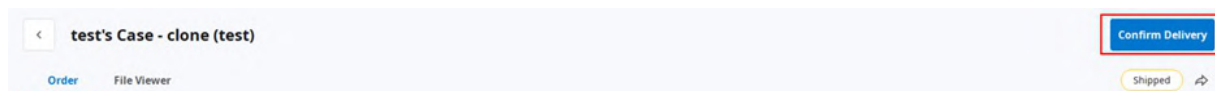

Dokončete neobjednaný případ v Case Box

U případů, které nejsou objednaný do Laboratoře, můžete tyto případy skompletizovat z Case Box.

1. Přejít do Case Box.
2. Vyberte případ, který chcete skompletizovat.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. Klikněte na „Stav“ a vyberte „Case Completed“.

Komunikujte pomocí značek

Pomocí značek můžete přidat další informace pro váš případ a odeslat je svým partnerům.

Přidejte značky při vytváření nového případu

Při vytváření nového případu nebo úpravě informací o případě můžete zadat značky.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Můžete snadno vyhledávat a vybírat značky, které jste použili dříve.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Přidejte značky při objednávce

Značky můžete kontrolovat a upravovat v dialogu Objednávka při objednávání.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Zkontrolujte značky na detailech případu

