

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

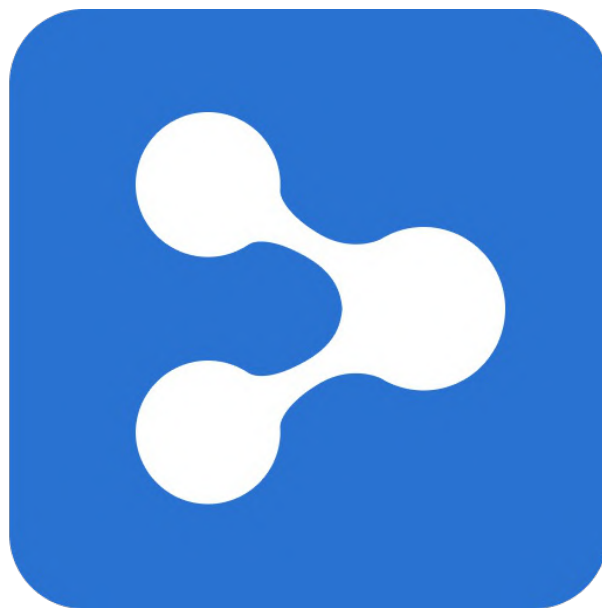


Table of Contents

Medit Link

Введение	7
Medit Link	7
Обзор сервиса	7
Облачный сервис	8
Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов	9

Medit Link > Установка

Системные требования	10
Системные требования для Windows	10
Системные требования для macOS	10
Системные требования для веб-сервиса	10
Рекомендуемые браузеры	10
Минимальные технические характеристики для мобильных устройств	10
Установка на Windows	11
Установка на macOS	14

Medit Link > Начало работы

Регистрация и вход в систему	18
Веб-сайт Medit Link	18
Регистрация	18
Вход в систему и страница приветствия	21

Medit Link > Веб-сервис Medit Link

Dashboard	24
Обзор Dashboard	24
Medit Insights	24
Подписаться на Medit Insights	25
Отписаться от Medit Insights	26
Patient	27
Поиск пациентов	27
Case Box/Work Box	28
Фильтрация проектов	28
Фильтрация по пациенту	28
Фильтрация по статусу	31
Фильтрация с использованием настроек периода	31
Фильтрация по поиску	32
Сведения о проекте	32
Order Box/In Box	34
Детали заказа	34
Вкладки в Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Создание Case Talk	35
Установка типа разрешения и параметров общего доступа	36
Детали Case Talk	38
Web Viewer	39
Аннотация	40
Комментарии	42

Совместное использование экрана в режиме реального времени	42
Дерево данных	42
Элементы управления деревом данных	42
Элементы управления 3D-моделью	43
Partners	45
Поиск партнеров	45
Мои партнеры	45
Приглашение партнера	46
Membership	47
Подписка	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Облачное хранилище	49
Подписка	50
Отмена подписки	51
Моя подписка	52
Подробнее	53
Возобновление подписки	53
Как добавить способ оплаты	54
Как изменить способ оплаты	55
Использование промокода	56
Подробнее	56
Регистрация промокода	57
Активация промокода	57
Детали оплаты	58
Просмотр деталей счета	59
My Info	61
Моя учетная запись	61
Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)	61
Мой сканер	62
Другое меню	65
Объявления и обновления	65
Связанные веб-сайты	65
Скачать приложение Medit Link	66
 Medit Link > Приложение Medit Link	
Обзор	67
В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.	67
Строка заголовка	68
Моя информация	68
Уведомления	68
Объявления и обновления	69
Настройки	69
Статус сетевого соединения	70
Настройки	72
Общие	72
Управление хранилищем	73
Установка периода	74
Локальное хранилище	74
Облачное хранилище	74
Установить подключенную программу	75
Параметры экспорта	75

Инструмент для преобразования проекта	77
Экспорт проекта	78
Импорт проекта	79
Параметры прокси	81
О программе	81
Руководство пользователя	82
Меню	83
Dashboard	83
Patient	83
Добавление нового пациента	84
Удаление пациента	84
Объединение пациентов	85
Case Box/Work Box	85
Вкладки в Case Box/Work Box	86
Функции в Case Box/Work Box	86
Order Box/In Box	87
Вкладки в Order Box/In Box	88
Case Talk	88
App Box	89
Все	89
Medit Apps	90
Скачано	90
Trash Box	90
Диспетчер синхронизации проектов	91
Загрузить	91
Скачать	92
Связанные веб-сайты	92
Просмотрщик файлов	94
Дерево данных	94
Инструменты управления моделью	94
Элементы управления 3D-моделью	95
Управление 2D-изображением	96
Функциональные инструменты	96
Захват изображений и заметки	96
Ортодонтический захват	97
Заполнить дырки	98
Обрезка	99
Оптимизация сопоставления окклюзии	102
Движение нижней челюсти	104
Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов	104
Как управлять несколькими результатами	104
Параметры просмотра	106
Фильтры статуса	106
Тип просмотра	107
Группировка	107
Сортировка	107
Фильтрация и поиск	109
Фильтрация по пациенту	109
Фильтрация по дате	110
Расширенные возможности поиска	111

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов	113
Создание проектов	113
Создание проекта в Case Box (клиника)	113
Создание проекта в Work Box (лаборатория)	114
Редактирование проектов	114
Редактирование проекта в Case Box (клиника)	114
Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)	115
Клонирование проектов	116
Клонирование проекта в Case Box (клиника)	116
Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)	116
Удаление проекта	117
Удаление проекта (клиника и лаборатория)	117
Информация формы	118
Регистрация информации формы в Case Box	118
Ввод на вкладке «Форма»	118
Регистрация информации формы в Work Box	118
Ввод на вкладке «Форма»	118
Соединение зубов в мост	118
Настройка параметров сканирования	119
Medit Scan for Labs	119
Общие параметры	119
Опции по зубам	119
Добавление в Избранное	119
Как добавить в Избранное	120
Управление избранными шаблонами	120
Работа по сканированию/CAD	121
Процесс сканирования	121
Процесс CAD	121
Использование дополнительных приложений	121
Добавление на панель «Быстрый запуск»	121
Управление запуском приложений	121
Быстрый запуск	122
Все приложения	122
Получение файлов результатов	123
Экспорт файлов результатов сканирования	123
Экспорт файлов результатов из списка проектов	124
Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов	127
Экспорт файлов результатов из дерева данных	128
Экспорт списка проектов в формате CSV	131
Экспорт линии края	132
Экспорт линии края в виде цвета	132
Экспорт линии края в виде файла	133
Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link	133
Case Box/Work Box	134
Web Viewer	134
Заказ/управление проектами	137
Заказ проектов	137
Подтверждение заказа (In Box)	138
Отменить заказ (Order Box)	138
Отклонить заказ (In Box)	138
Проверка заказанных проектов	138
Ввод информации о доставке (In Box)	139

Управление датой доставки	139
Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)	139
Установка ожидаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)	140
Завершение проекта	141
Завершение проекта (Work Box, In Box)	141
Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте	141
Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов	142
Завершение проекта (Case Box/Order Box)	142
Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box	142
Общение с помощью тегов	144
Добавление тегов при создании нового проекта	144
Добавление тегов при оформлении заказа	145
Просмотр тегов в сведениях о проекте	145

Введение

Medit Link

Medit Link – это инструмент для совместной работы, предназначенный для облегчения коммуникации между клиниками и лабораториями с целью оптимизации рабочего процесса для каждой из сторон.

Он предлагает дифференцированные возможности в зависимости от типа и разрешений каждой учетной записи. Программа предлагает удобный пользовательский интерфейс для управления рабочим процессом от сканирования с помощью внутриротовых и настольных сканеров и заказа проектов до разработки и производства протезов.

Medit Link включает в себя веб-сервис и компьютерное приложение.

Обзор сервиса

		Веб-сервис	Приложение
		- Регистрация и управление учетной записью - Поиск и управление партнерами - Обмен проектами через Web Viewer с помощью общей ссылки - Доступ к проектам, созданным в приложении - Управление заказами	- Ввод информации формы - Сканирование - Управление заказами - Связь с CAD - Ведение пациентов
Клиника	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашими клиниками, а также обмен проектами. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Ввод информации формы, сканирование, размещение заказов и ведение пациентов. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Пользователь	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
Лаборатория	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашей лабораторией, а также обмен проектами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	Ввод информации формы, сканирование и управление заказами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Пользователь	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Облачный сервис

Medit Link поддерживает автоматическую загрузку/скачивание базы данных и файлов через AWS (Amazon Web Services).

Данные, хранящиеся в облаке, автоматически синхронизируются с компьютерами сразу нескольких пользователей организации, благодаря чему они могут получить доступ к одним и тем же данным в любое время и с любого компьютера. Облачное резервное копирование и последующее восстановление сохраненных файлов обеспечивают безопасность всех ваших данных. Ваши данные сохраняются в безопасности даже в случае их потери из-за внезапного сбоя компьютера.

Облачный сервис позволяет партнерским стоматологиям и лабораториям быстро обмениваться данными без необходимости пересылать отсканированные данные по электронной почте или вручную. Все данные, включая информацию о пациентах, надежно шифруются, хранятся и передаются. Medit соблюдает медицинское законодательство и правила, такие как HIPAA и GDPR.

Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов

Medit Link предлагает свою систему оформления заказов.

- Medit Link позволяет устанавливать партнерские отношения между стоматологами и зуботехническими лабораториями и быстро и легко обмениваться данными.
- Вы можете проверять и управлять статусом заказа.

Системные требования

Примечание

Пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями для Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs, если хотите использовать программное обеспечение для сканирования со своим сканером.

Системные требования для Windows

	Ноутбук и настольный ПК
Процессор	Intel Core i5 2,6 ГГц или выше
Оперативная память	16 GB или выше
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) или выше/или эквивалентная видеокарте AMD
ОС	Windows 10 64 Bit (недоступно для 32 Bit) или выше

Системные требования для macOS

	Mac
Процессор	M1 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
Оперативная память	16 GB или выше
ОС	Monterey 12 или выше

Системные требования для веб-сервиса

Рекомендуемые браузеры

	Браузеры
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Минимальные технические характеристики для мобильных устройств

	Android	iOS
Устройство	Эквивалент Galaxy S7 или выше	Эквивалент iPhone 7 или выше
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативная память	3 GB или выше	2 GB или выше
AP	Выше Snapdragon 710	A10 Fusion


Установка на Windows

Medit Link устанавливается в комплекте с программами сканирования – Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs.


1. Запустите Medit_LinkSetup.exe.
2. Выберите язык для установки.
3. Выберите папку для установки Medit Link. Пожалуйста, прочтите и согласитесь с положениями и условиями лицензии и нажмите «УСТАНОВИТЬ».

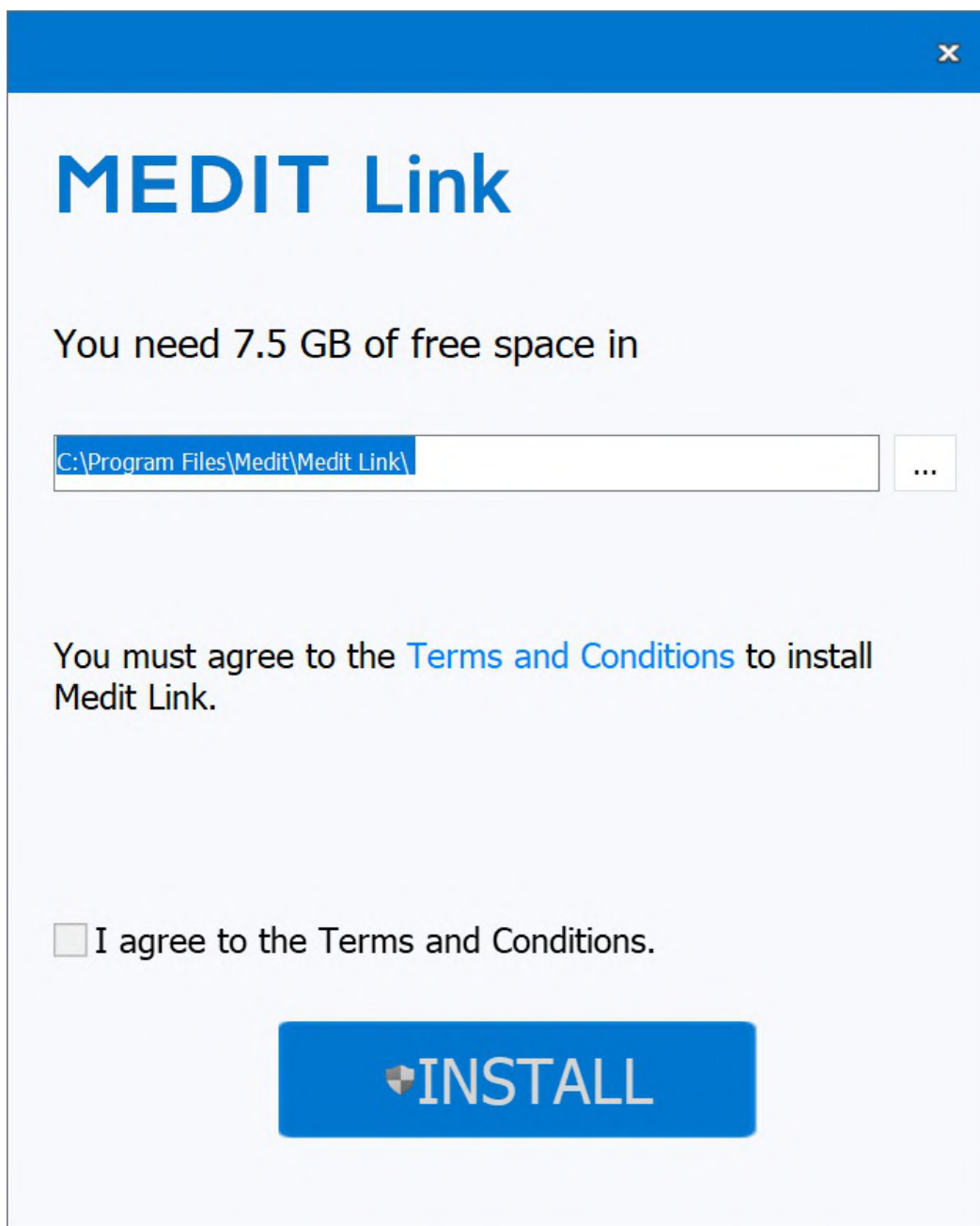

4. Убедитесь, что кабель сканера отключен от компьютера, прежде чем переходить к следующему шагу. Установка не будет продолжена, если сканер подключен к компьютеру.
5. Установка программы продолжится автоматически и может занять несколько минут. Не выключайте и не отключайте компьютер от сети до завершения установки.

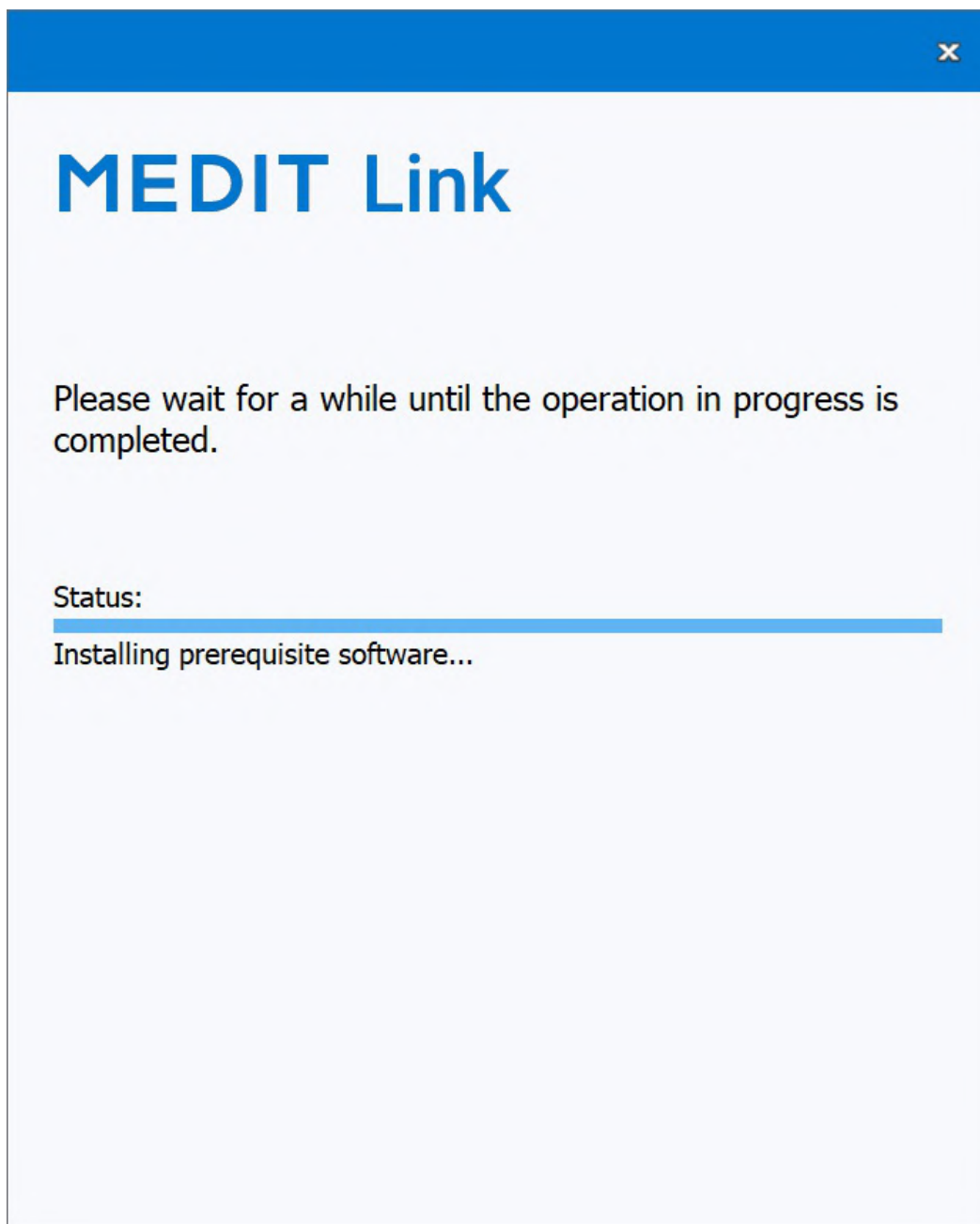

6. После завершения установки перезагрузите компьютер. Если у вас нет сканера, можно продолжить работу без перезагрузки компьютера.

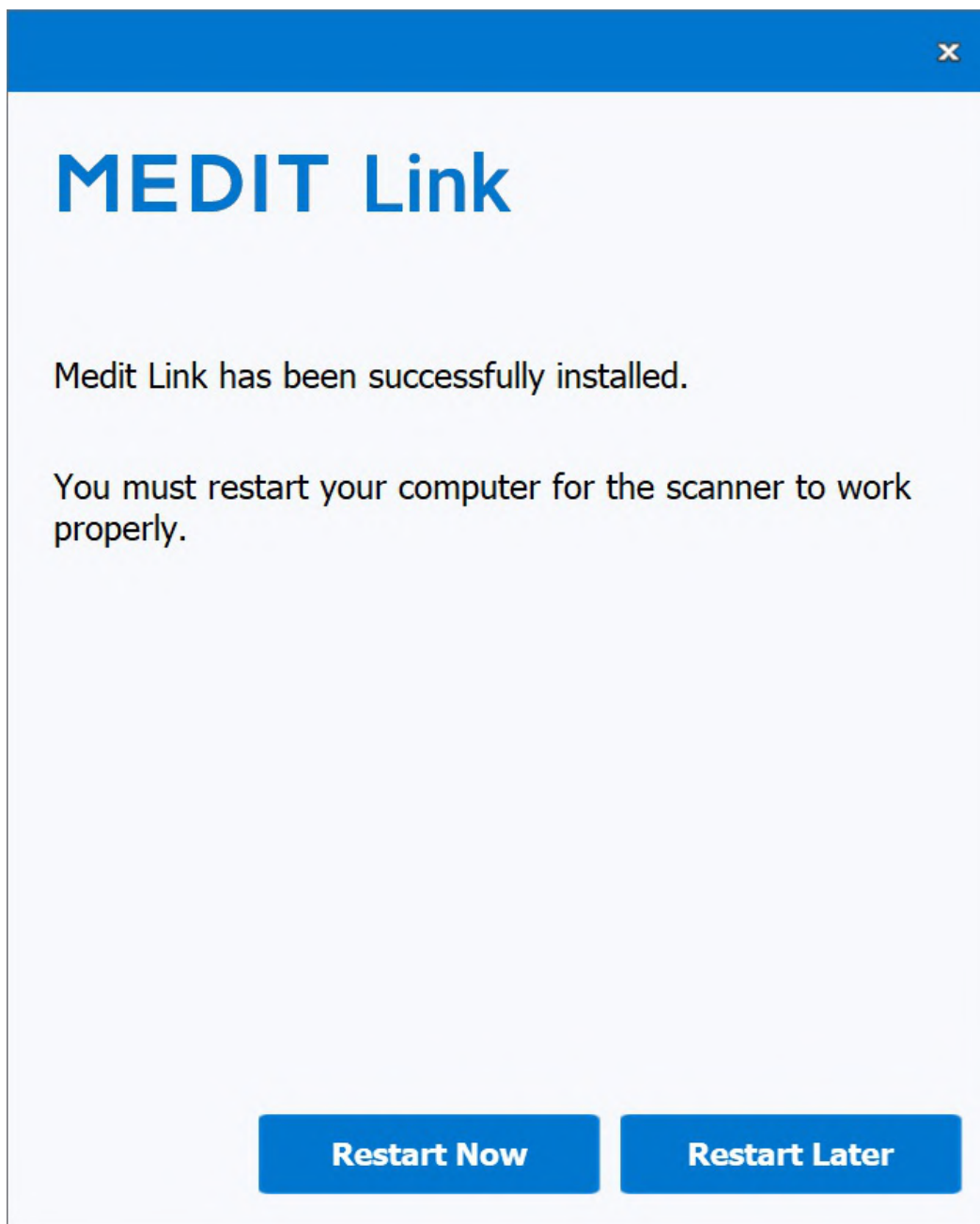


 Примечание

Если вы не перезагрузите компьютер после завершения установки, сканер может работать некорректно.


Установка на macOS

Medit Link устанавливается в комплекте с Medit Scan for Clinics.


1. Запустите Medit_Link_x.x.x.pkg и нажмите «Продолжить».

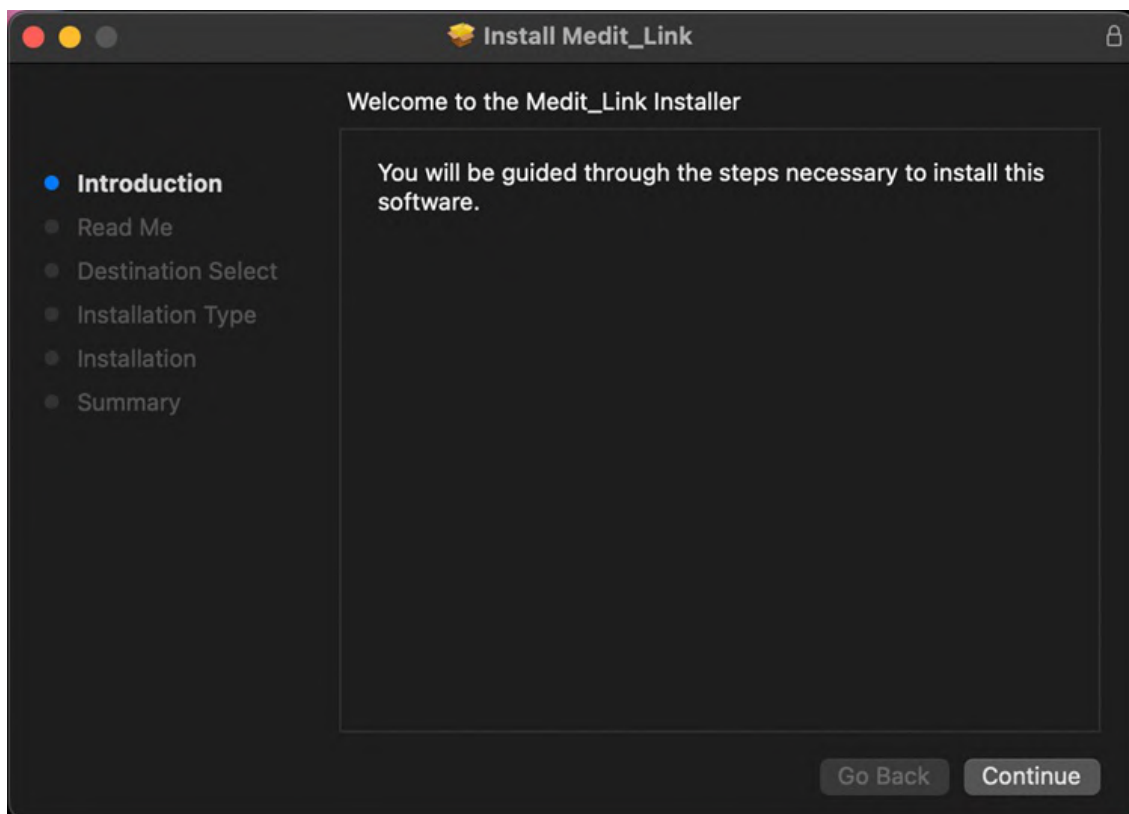


2. Прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите «Продолжить».

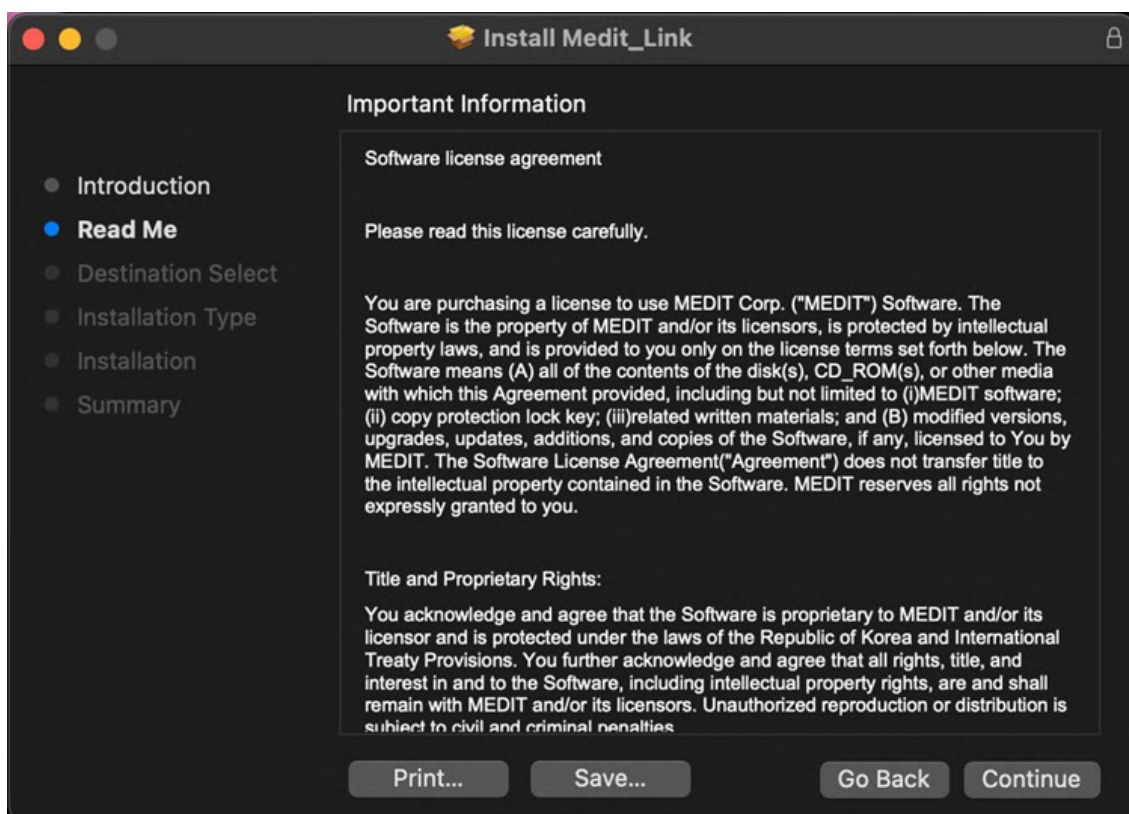

3. Выберите диск для установки и нажмите «Продолжить».

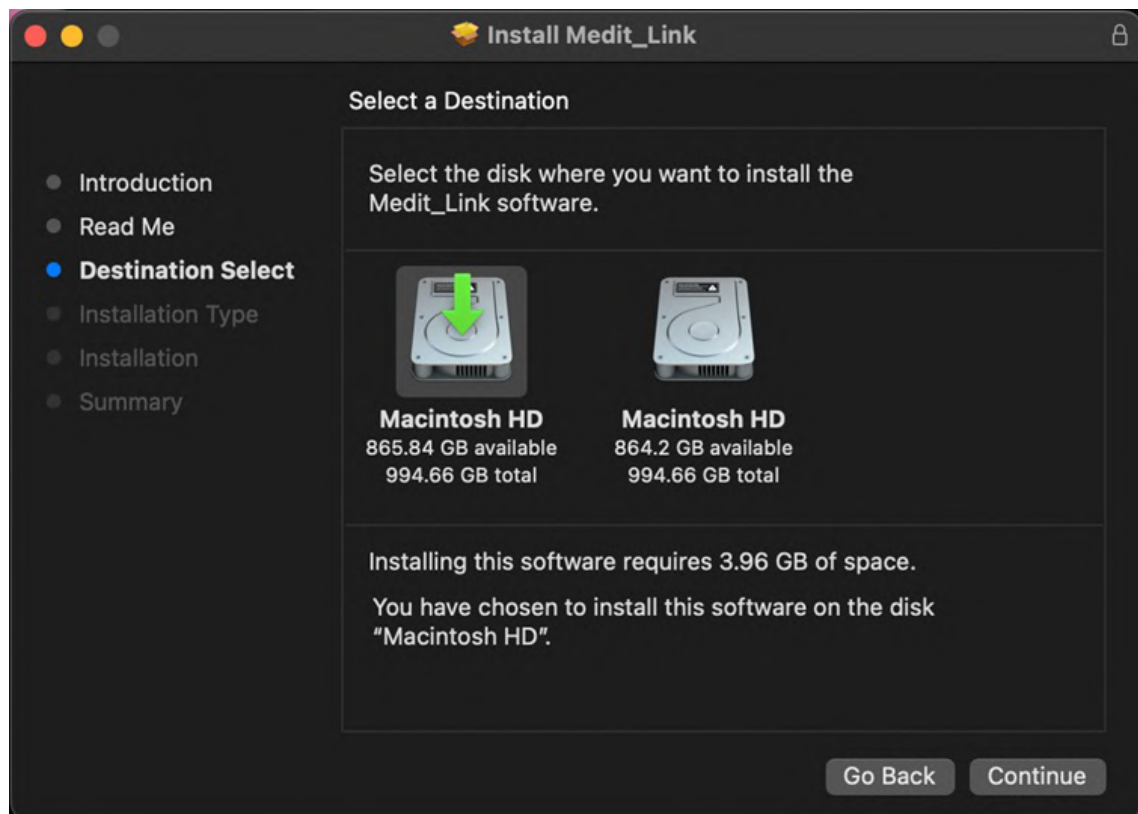


4. Чтобы изменить место установки, нажмите «Изменить место установки...».

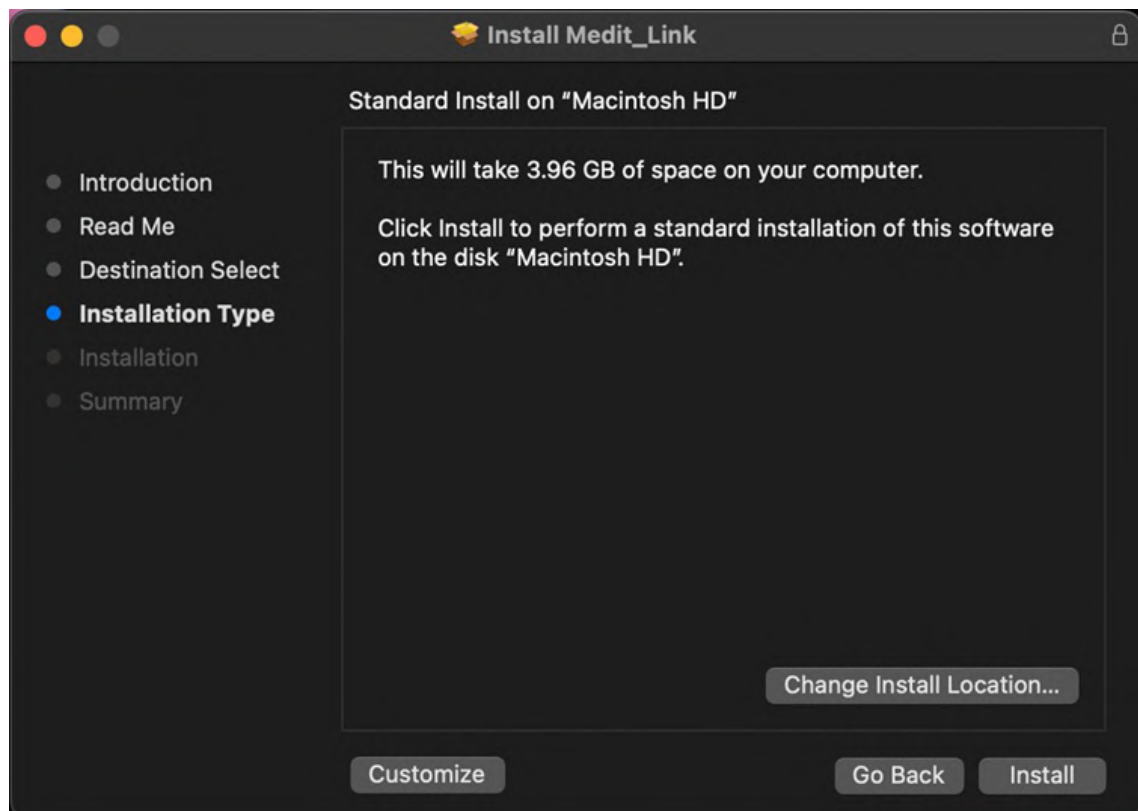


5. Нажмите «Установить» и введите свой пароль Мас, если он будет запрошен, для разрешения установки.



6. Дождитесь завершения установки.

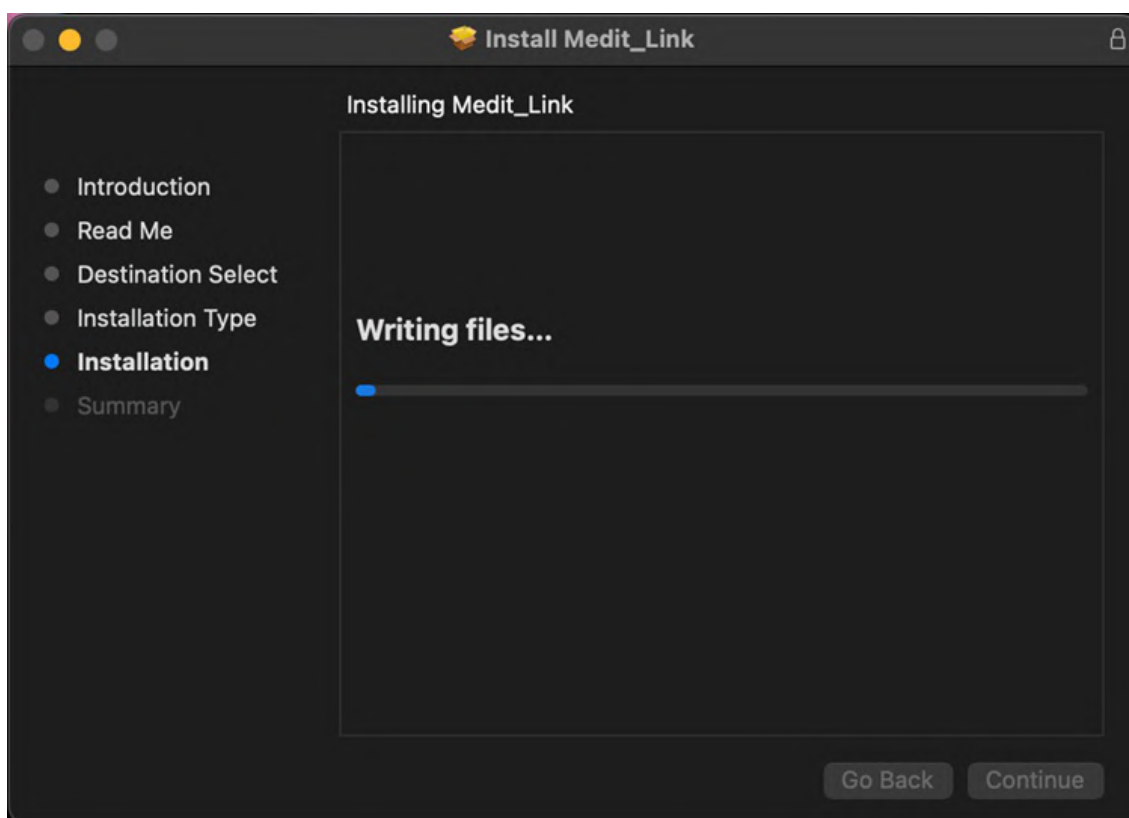


7. Нажмите «Закреть», чтобы закрыть окно установки.

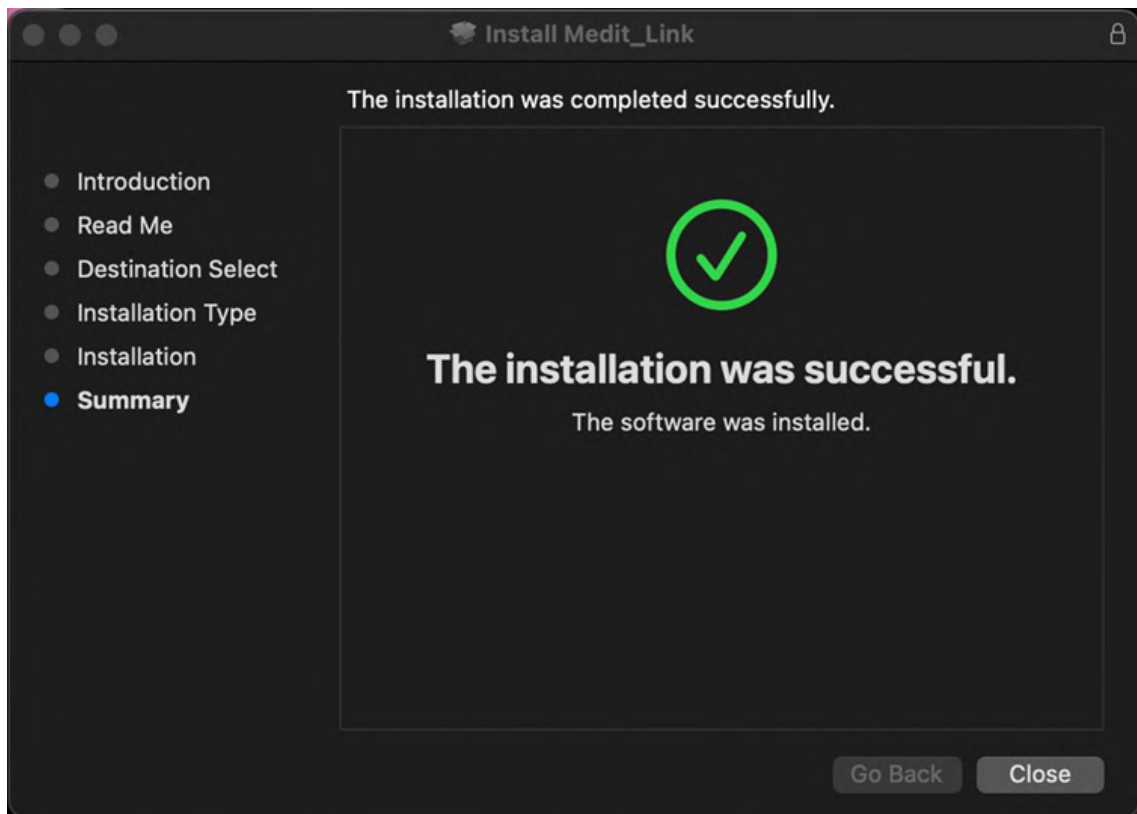

Регистрация и вход в систему

Веб-сайт Medit Link

Зарегистрируйтесь в сервисе Medit Link на сайте www.meditlink.com.

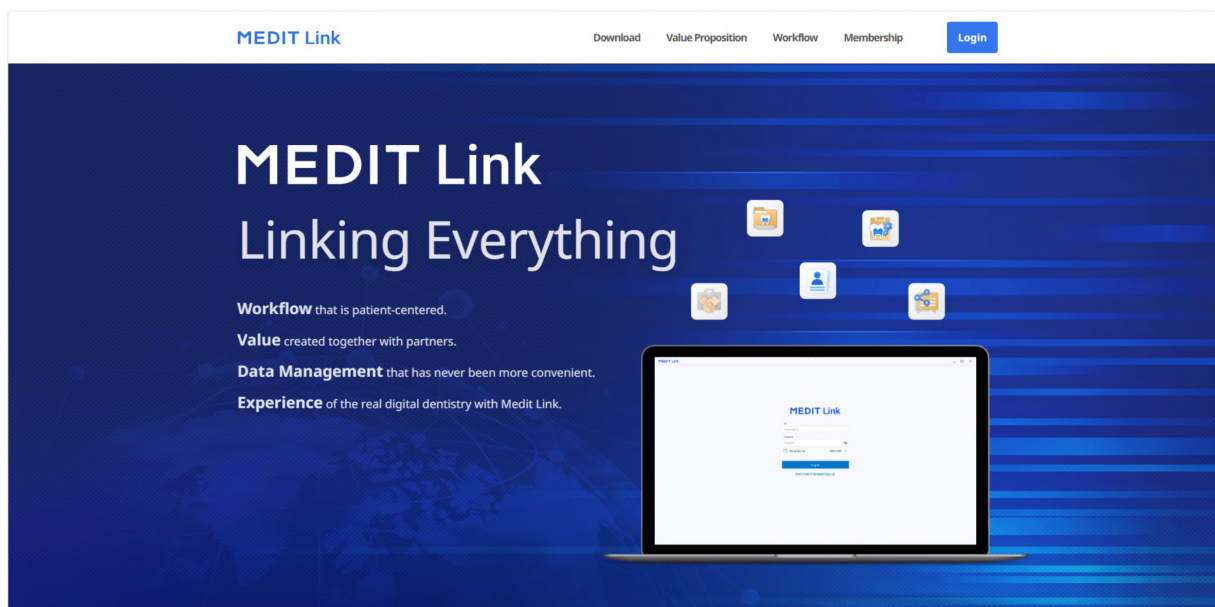

Примечание

Зарегистрируйтесь в Medit Link China на сайте www.meditlink.cn.

Регистрация

Для использования сервиса Medit Link вам необходимо зарегистрировать учетную запись. Вы можете использовать функции, предоставляемые в Medit Link, после создания учетной записи в качестве клиники или лаборатории.

Для регистрации подписки и использования сервиса с полными или ограниченными функциями и привилегиями, в зависимости от типа учетной записи, пользователи могут выбрать один из четырех следующих типов учетных записей:

- Клиника – администратор
- Клиника – пользователь
- Лаборатория – администратор
- Лаборатория – пользователь

Администратор обычно является представителем вашей организации и имеет неограниченный доступ ко всем функциям и сервисам Medit Link. В то время как пользователь – лишь к ее части.

Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя, выполните следующие действия:

1. Нажмите «У вас ещё нет учетной записи? Зарегистрироваться!» на странице входа в систему.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Прочтите описание и нажмите кнопку «Зарегистрировать» для нужного типа учетной записи.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

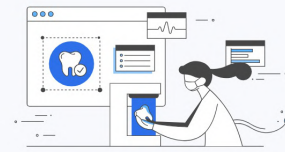

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. На экране появится следующая регистрационная форма.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Введите название клиники или лаборатории, а затем, в зависимости от типа вашей учетной записи, выполните следующие действия:
 - Если вы регистрируетесь как администратор, нажмите «Проверить доступность», чтобы узнать, доступно ли введенное вами название.
 - Если вы регистрируетесь как пользователь, нажмите «Поиск». Администратор должен зарегистрировать вашу организацию до вашей регистрации.
5. Заполните оставшуюся часть регистрационной формы и нажмите «Зарегистрировать».

Примечание

Если при регистрации вы дадите согласие на получение маркетинговой рассылки, то будете получать полезную информацию о продуктах и услугах компании Medit.

6. Вам будет отправлено письмо для верификации.
7. Чтобы завершить процесс регистрации, подтвердите свой адрес электронной почты, используя полученную ссылку.

Вход в систему и страница приветствия

1. Введите адрес своей электронной почты и пароль на странице входа в систему и нажмите «Авторизоваться».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾


Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)

 English (United States) ▾

2. Если вы не заполнили информацию о своей компании, появится следующее всплывающее окно.

Welcome, stage-test-wh!

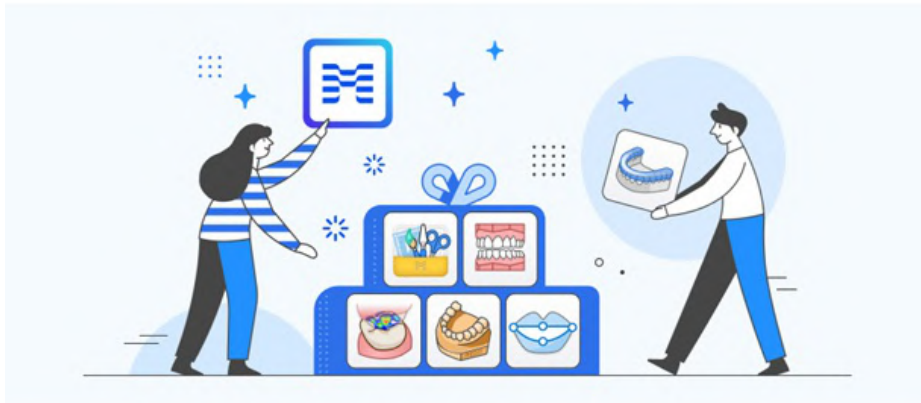

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

🔑Примечание


Чтобы пользоваться услугами Medit Link, информацию о вашей клинике или лаборатории необходимо ввести, используя учетную запись администратора.

3. Нажмите кнопку «Перейти в мою клинику» или «Перейти в мою лабораторию» и введите информацию о клинике или лаборатории, включая название компании, изображения обложки/логотипа, предлагаемые вами услуги, адрес офиса, номер кабинета и т. д.
4. Информация, введенная на странице приветствия, может быть отредактирована в любое время в разделе My Info > Моя клиника или Моя лаборатория в веб-сервисе Medit Link.

Dashboard

Обзор Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

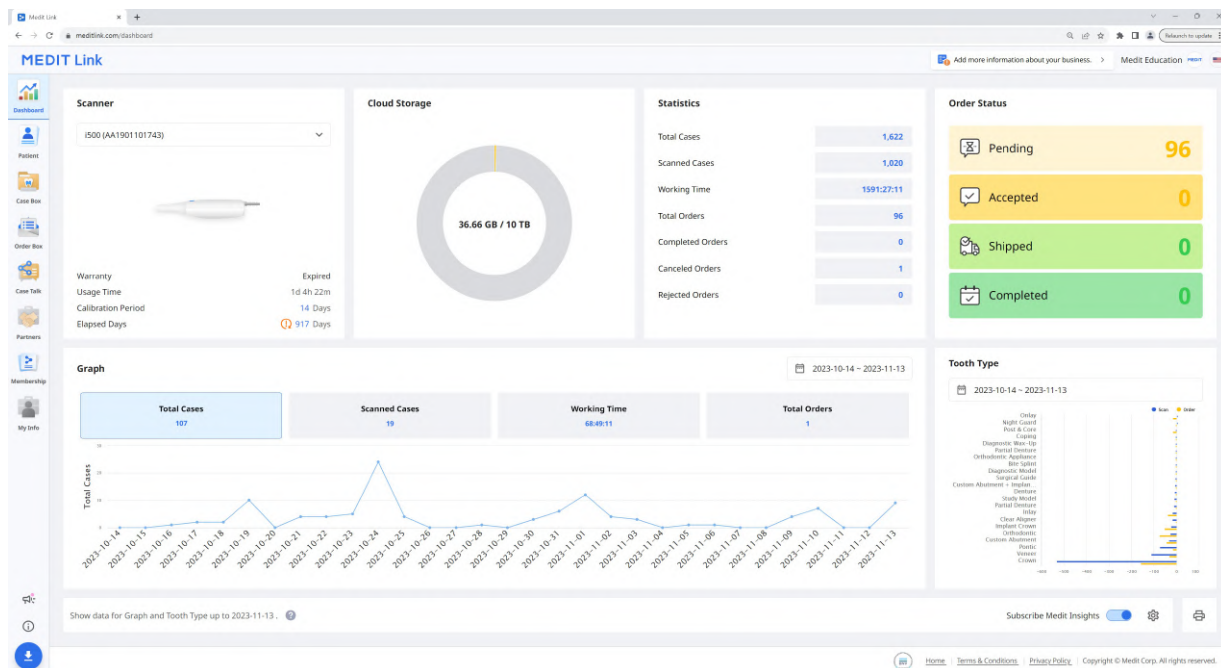

Графики и диаграммы в Dashboard отображают статистику всей работы, проделанной в Medit Link.

Сканер	Предоставляет информацию об активных сканерах, включая гарантию, время их использования, интервал калибровки и пройденное с момента последней калибровки время.
Облачное хранилище	Показывает общую емкость облака и используемый объем.
Общая статистика	Показывает статистику по проектам на основе рабочего статуса.
Статус заказа	Показывает статистику по проектам на основе статуса заказа.
График	Показывает графическое представление информации о работе по периодам.
Тип зуба	Показывает статистику количества сканирований и заказов на основе информации о лечении.


Medit Insights

Medit Insights – это сервис отчетов, который помогает вам анализировать статистику использования.

Примечание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Medit Insights

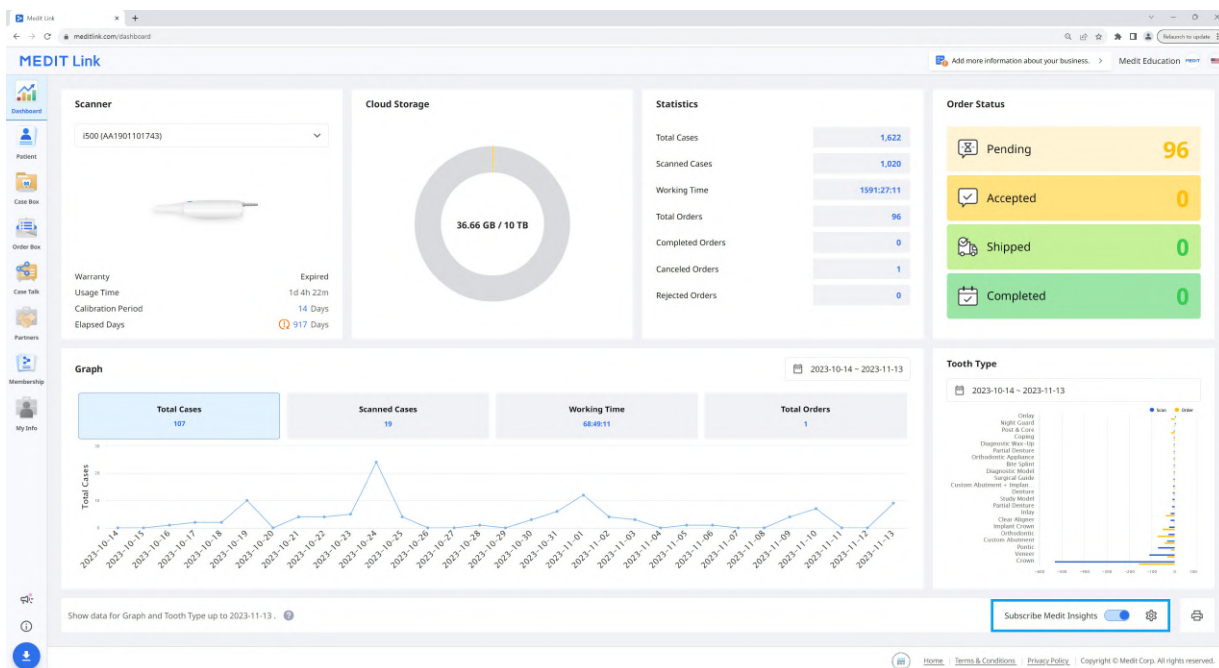

Подписаться на Medit Insights

Вы можете получать отчет по электронной почте второго числа каждого месяца. Дополнительный процесс регистрации не требуется. Просто активируйте «Подписаться на Medit Insights».

Если вы не используете адрес электронной почты, который ввели для учетной записи Medit Link, для получения отчетов от Medit Insights вы можете задать другой адрес электронной почты.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Вы будете получать электронное письмо со статистической отчетностью, как на изображении ниже, второго числа каждого месяца.

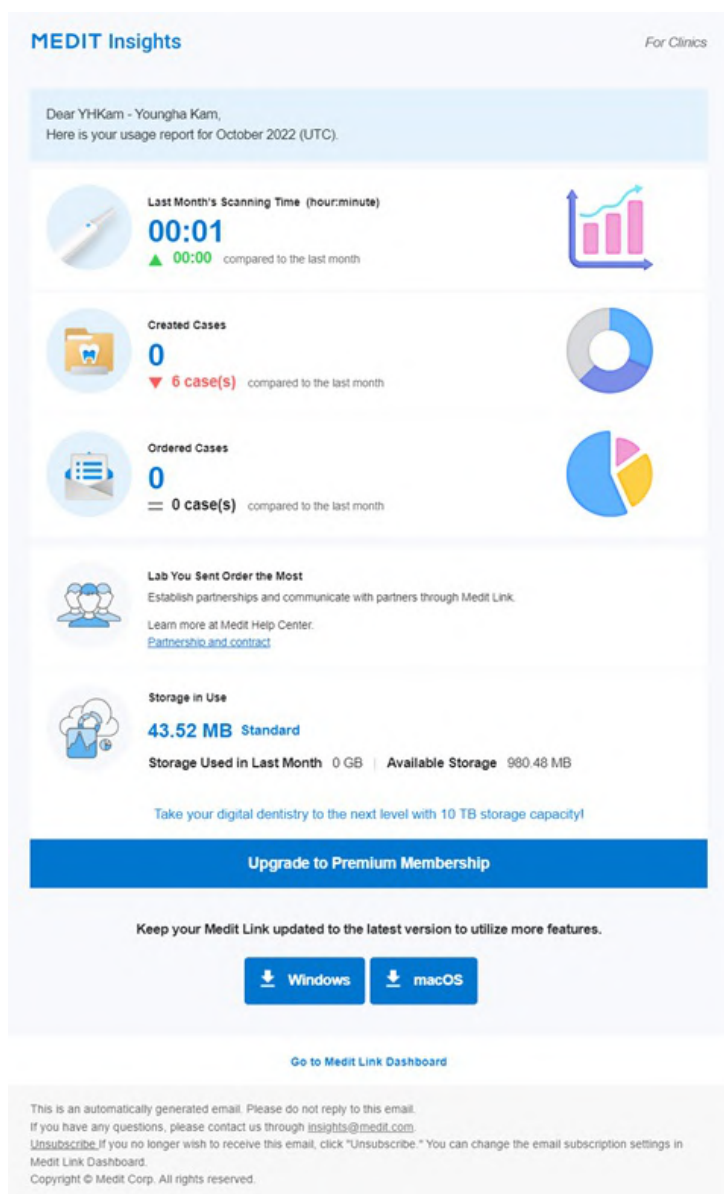

Баннер	Здесь Medit размещает полезные советы и информацию. * Если вы не хотите, чтобы баннер отображался, снимите флажок «Соглашение о маркетинге и продвижении» в разделе Моя информация > Моя учетная запись.
Статистическая информация	Здесь отображается такая статистическая информация как время сканирования, созданные проекты, лаборатория с наибольшим количеством заказов и т. п.
Скачать Medit Link	Эта кнопка содержит ссылку на скачивание Medit Link.
Dashboard	Вся статистическая информация основана на информации из вашего Dashboard. Более подробную информацию смотрите в Dashboard.


Отписаться от Medit Insights

Отключите «Подписаться на Medit Insights» в Dashboard или нажмите «Отписаться» в полученном письме.

Patient

Вы можете управлять проектами на основе имени и идентификатора пациента.


Все пациенты, зарегистрированные через приложение Medit Link, отображаются в виде списка, что облегчает управление пациентами и их проектами.

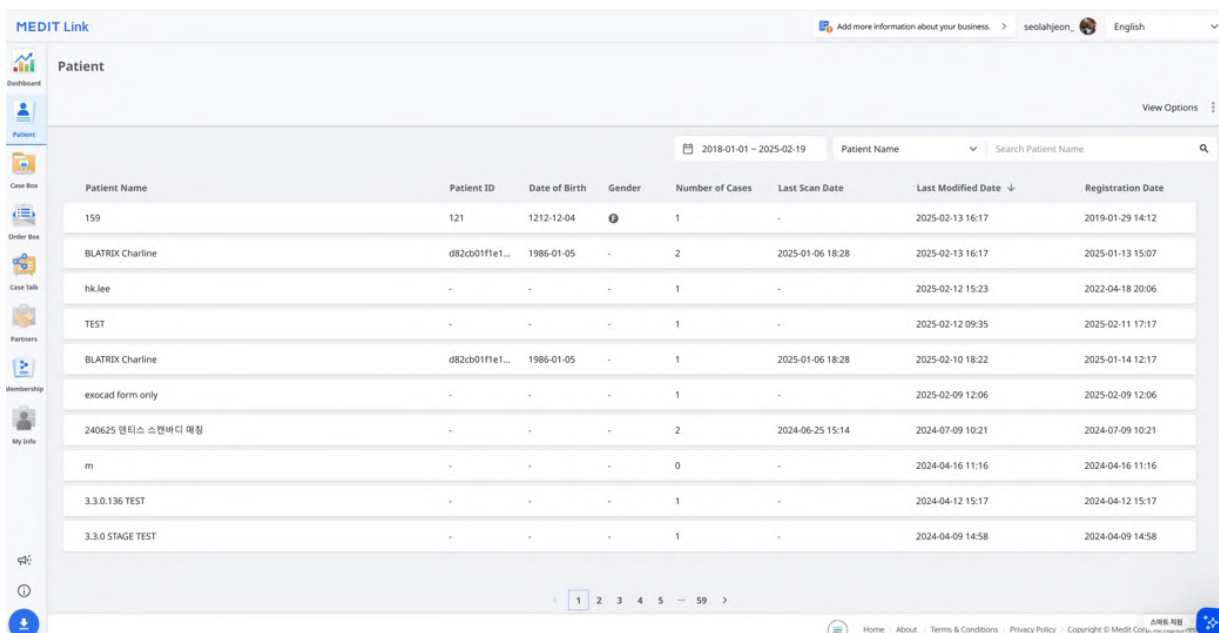

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Поиск пациентов

1. Выберите нужный критерий поиска между вариантами «Имя пациента» или «Идентификатор пациента» в выпадающем меню в правом верхнем углу списка пациентов.

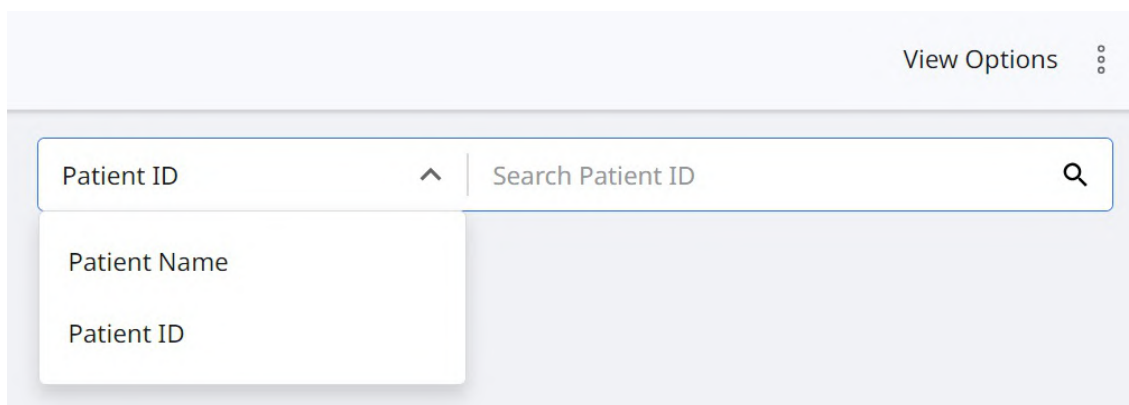

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Введите имя или идентификатор пациента для поиска в соответствии с выбранными критериями поиска.
3. В списке будут отображены только те пациенты, имя или идентификатор которых вы ввели.

Case Box/Work Box


Case Box (клиника) или Work Box (лаборатория) показывают все проекты, созданные пользователем в приложении Medit Link. Вы можете просматривать файлы через веб-браузер без установки отдельной программы.

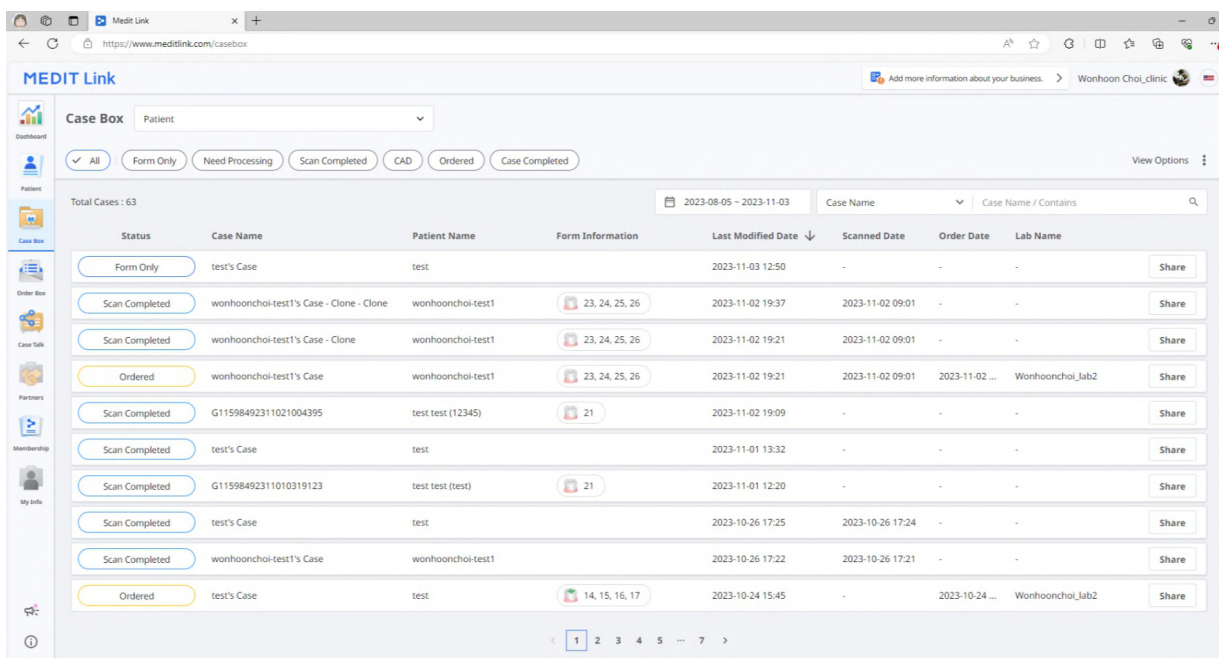

Фильтрация проектов

Фильтрация по пациенту

Вы можете фильтровать проекты по пациентам. Это удобно, когда вам необходимо найти проекты по каким-либо конкретным пациентам.

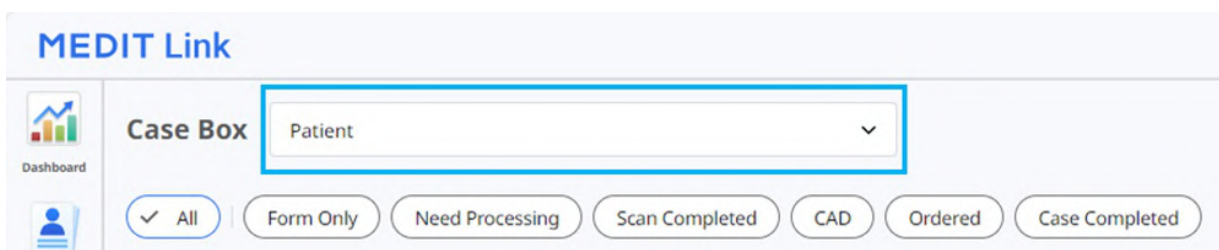

1. Введите имя пациента в поле поиска.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Выберите пациента из списка результатов поиска.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. В списке отображаются проекты только тех пациентов, которые были выбраны, что заметно упрощает поиск проектов, с которыми вы хотите работать.

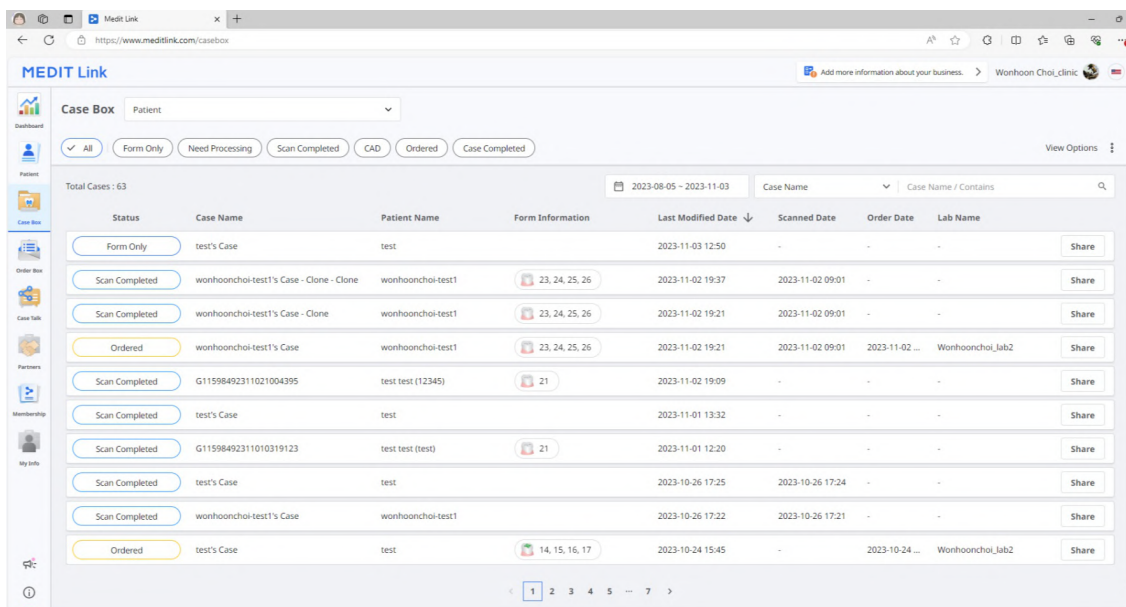

Фильтрация по статусу

Вы можете осуществлять фильтрацию проектов по их статусу.

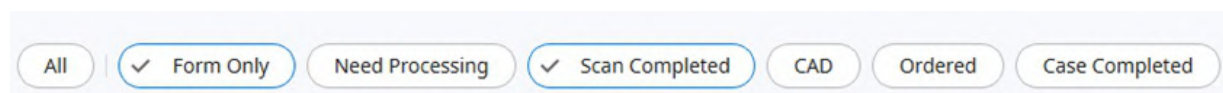

- Нажмите на статус, который хотите просмотреть. В браузере отобразятся только те проекты, которые имеют выбранный статус.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

В зависимости от типа учетной записи доступны следующие типы статусов:

Case Box (клиника)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (лаборатория)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Фильтрация с использованием настроек периода

Вы можете фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного вами периода.

1. Задайте период времени.



2. Выберите диапазон.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Все: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, изменения в которые были внесены в этот период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Последние 90 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 90 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты за текущий месяц.
- Предыдущий месяц: показывает проекты за прошедший месяц.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Фильтрация по поиску

Вы можете использовать возможности поиска, чтобы легко и быстро найти необходимую информацию.


Case Name

Case Name / Contains

В зависимости от типа учетной записи доступны следующие параметры поиска:

Case Box (клиника)	Название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории
Work Box (лаборатория)	Название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа

Сведения о проекте

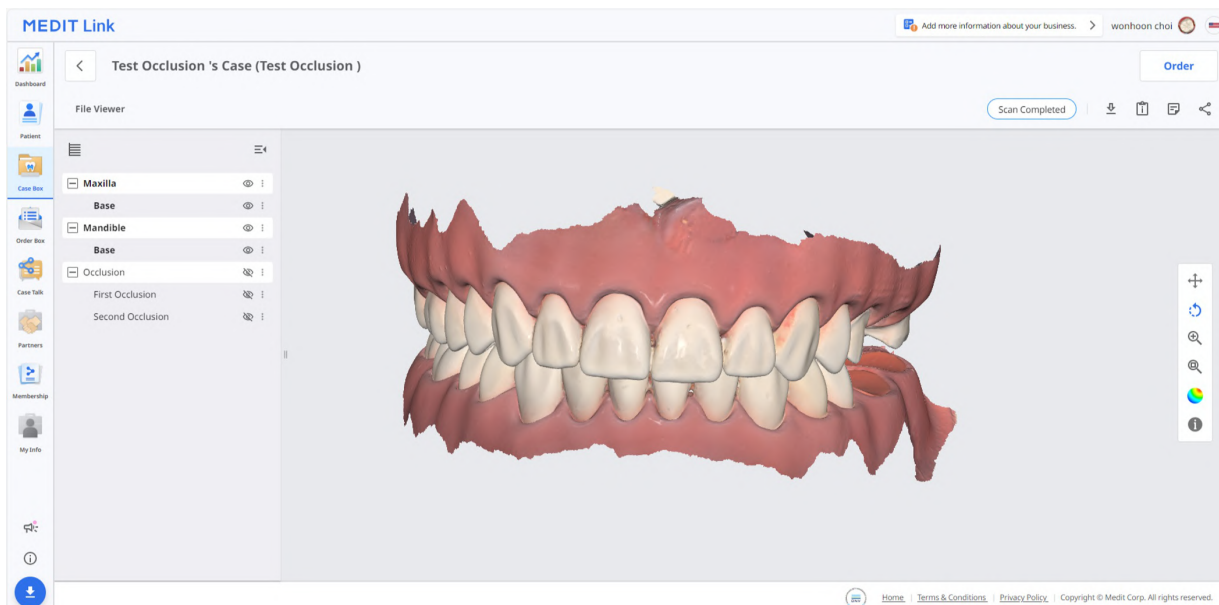

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие инструменты управления проектом:

	Статус проекта	Показывает статус проекта.
	Перейти в Order Box/In Box	Создает ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Скачать	Скачивает файлы из проекта на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. С этой ссылкой пользователь может получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ.

Order Box/In Box

Order Box (клиника) или In Box (лаборатория) отображают проекты, заказанные в приложении Medit Link.

Детали заказа

The screenshot displays the Medit Link web application interface. The top navigation bar includes the Medit Link logo and a user profile section. The main content area is divided into two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is currently selected, showing a form for an 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)'. The form contains fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. A 'Cancel Order' button is located in the top right corner. The 'File Viewer' tab shows an 'Order List' table with columns for No., Type, Method, Material, and Shade, containing four rows of data.

- | | |
|---|--|
| 1 | Название проекта и имя пациента. |
| 2 | Функции для управления заказом (прием/отмена; доставка/получение). |
| 3 | Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов». |
| 4 | Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п. |
| 5 | Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги. |
| 6 | Информация о заказанном продукте и статусе доставки. |


Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация о заказе, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

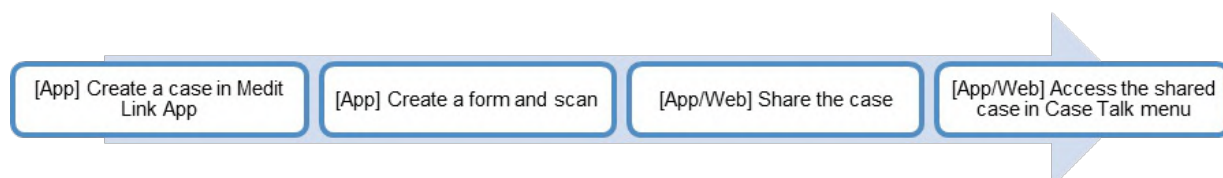


Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.


Создание Case Talk

Вы можете создать общую ссылку на проект, который был создан в Case Box/Work Box.

1. Найдите проект, которым хотите поделиться, и нажмите кнопку «Поделиться» справа.

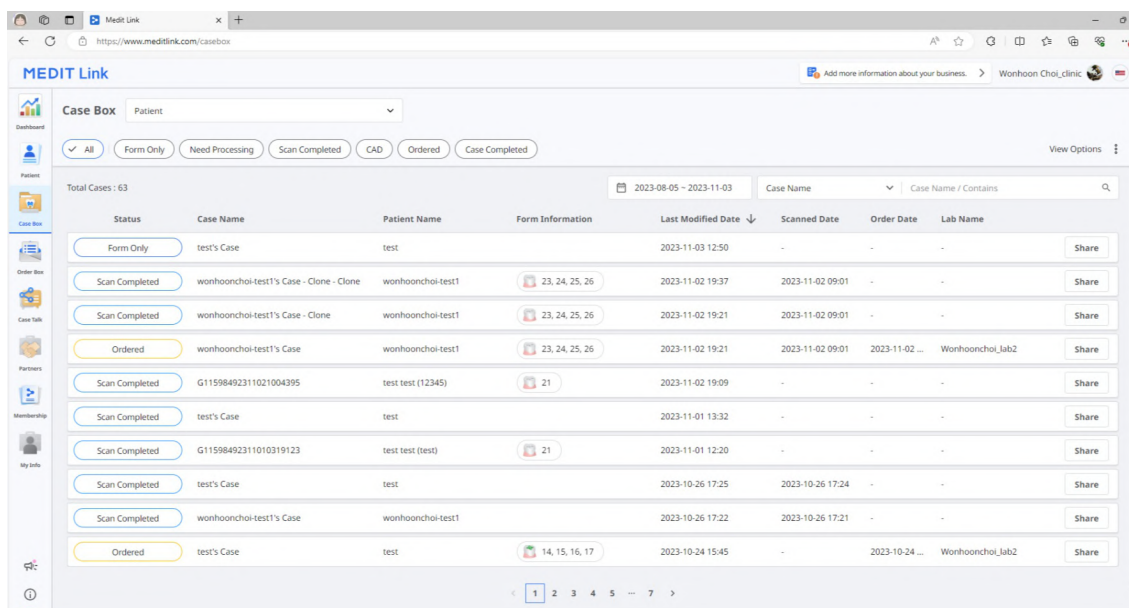

2. Выберите файлы, которыми хотите поделиться.

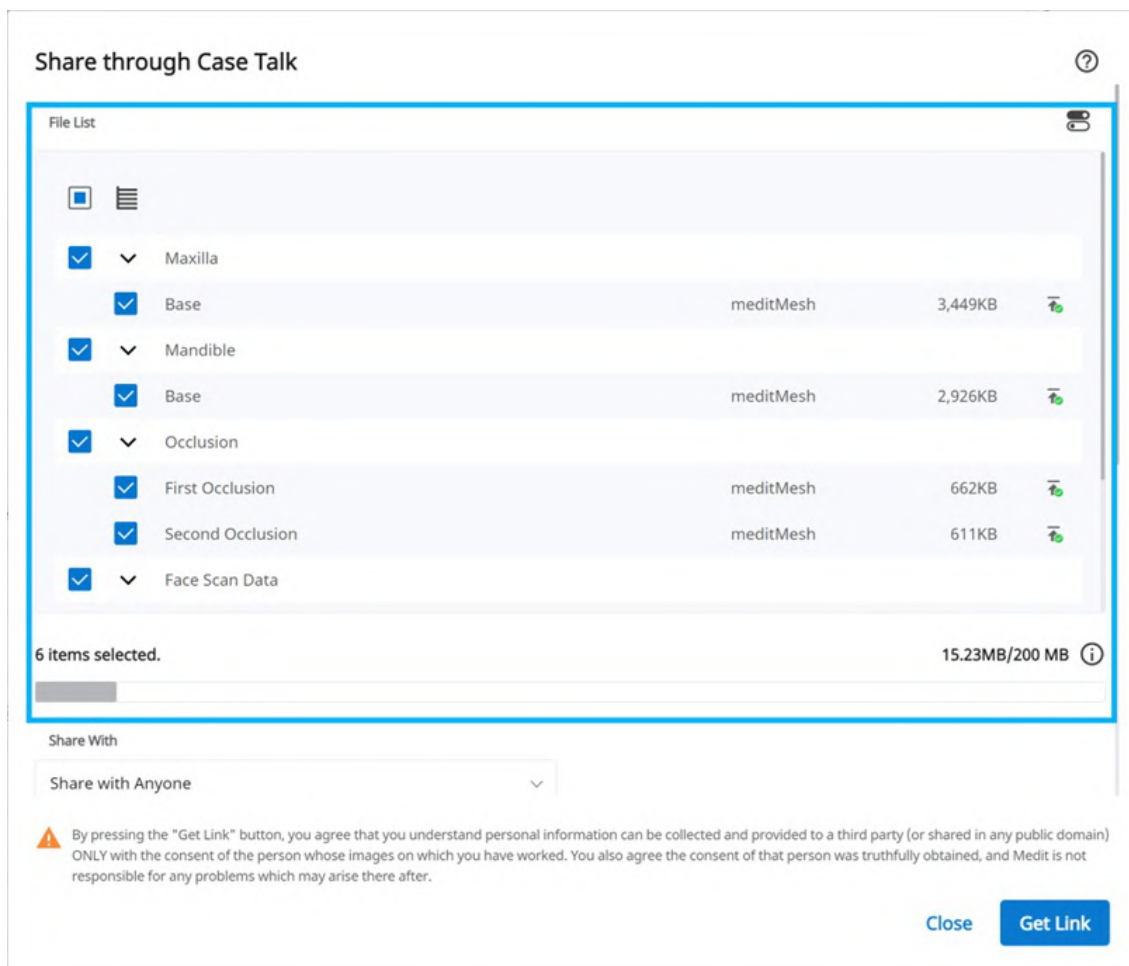

3. Установите тип разрешения и параметры общего доступа.
4. Нажмите «Создать ссылку», чтобы создать общую ссылку.

Установка типа разрешения и параметров общего доступа

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via



PIN Code



PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024



By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Поделиться с	• Поделиться со всеми Создает общую ссылку. Вы можете поделиться файлами с кем угодно. • Поделиться с определенными людьми Создает и отправляет общую ссылку определенным пользователям.
Поделиться через	При выборе варианта «Поделиться с определенными людьми» вы можете поделиться с ними общей ссылкой различными способами: • Адрес электронной почты • SMS • Partners
Дата окончания срока действия	Установите дату окончания срока действия ссылки. После его окончания люди, с которыми вы поделились ссылкой, больше не будут иметь доступ к файлам. Срок действия ссылки можно продлить до 90 дней, начиная с текущего дня.
ПИН-код	Установите 6-значный код доступа для обеспечения безопасности данных.
Передать имя пациента	Если вы отметите эту опцию, увидеть имя пациента смогут все пользователи, у которых есть ссылка.
Предоставить разрешение на скачивание	Если вы отметите эту опцию, все пользователи, у которых есть ссылка, смогут скачать файлы.
Разрешить комментарии	• При выборе этого параметра вы сможете обмениваться информацией по общей ссылке. • Если отключить этот параметр, получатель сможет только просматривать ваши комментарии без возможности добавлять свои собственные.
Комментарий	Вы можете оставить сообщение в секции комментариев.

Детали Case Talk

Вы можете просматривать файлы в проекте с общим доступом. На странице деталей Case Talk доступны следующие функции:

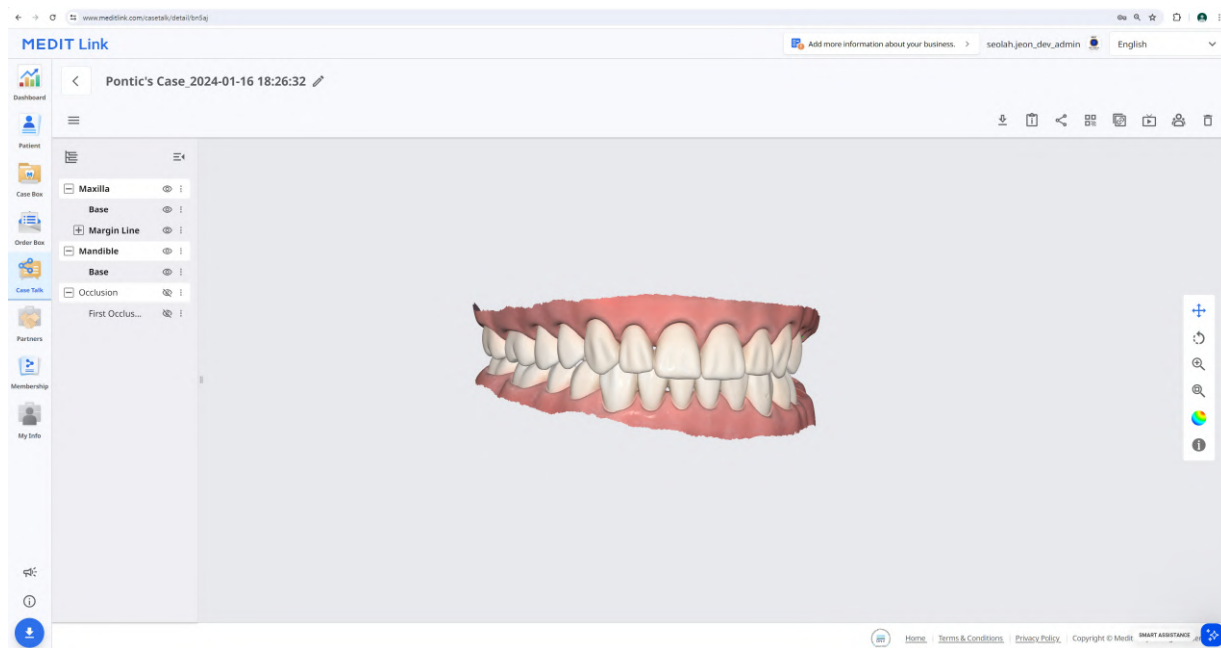

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменить настройки общего доступа.
	QR-код	Поделитесь проектом с помощью QR-кода.
	Копировать ссылку	Копирует общую ссылку в буфер обмена. Скопированная ссылка показывает в вашем веб-браузере файлы общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, которые получили доступ к общей ссылке.
	Удалить	Удаляет общую ссылку. Удаленная общая ссылка больше недоступна.

Примечание


Следующие сервисы недоступны в MEDIT Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Web Viewer

Вы можете использовать веб-браузер для просмотра совместно используемых данных в Case Talk.

Общайтесь с пользователями, имеющими доступ к ссылке, с помощью аннотаций и комментариев.

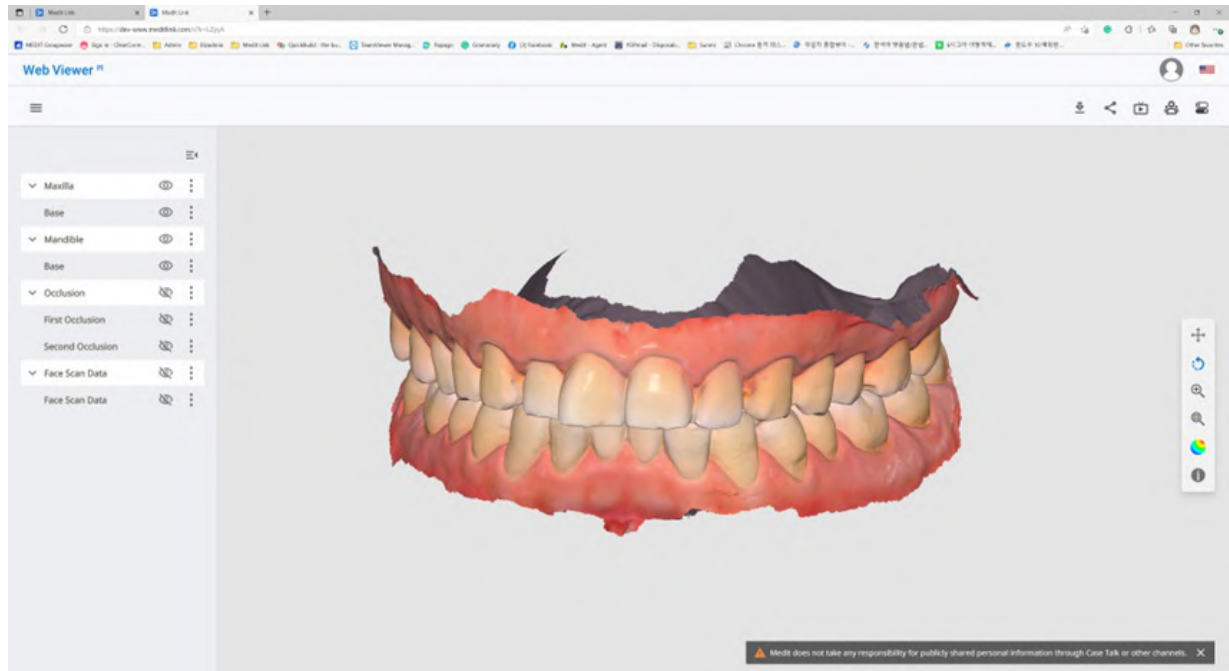

	Скачать	Загрузите все файлы из этого проекта на ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	QR-код	Поделитесь проектом с помощью QR-кода.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, подключившихся к общей ссылке.
	Маркировка зуба	Изменяет систему маркировки зубов.


Примечание

Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Аннотация

Вы можете добавлять аннотации к выбранному участку 3D-модели. Добавленные аннотации могут быть просмотрены любым пользователем, имеющим доступ к ссылке.

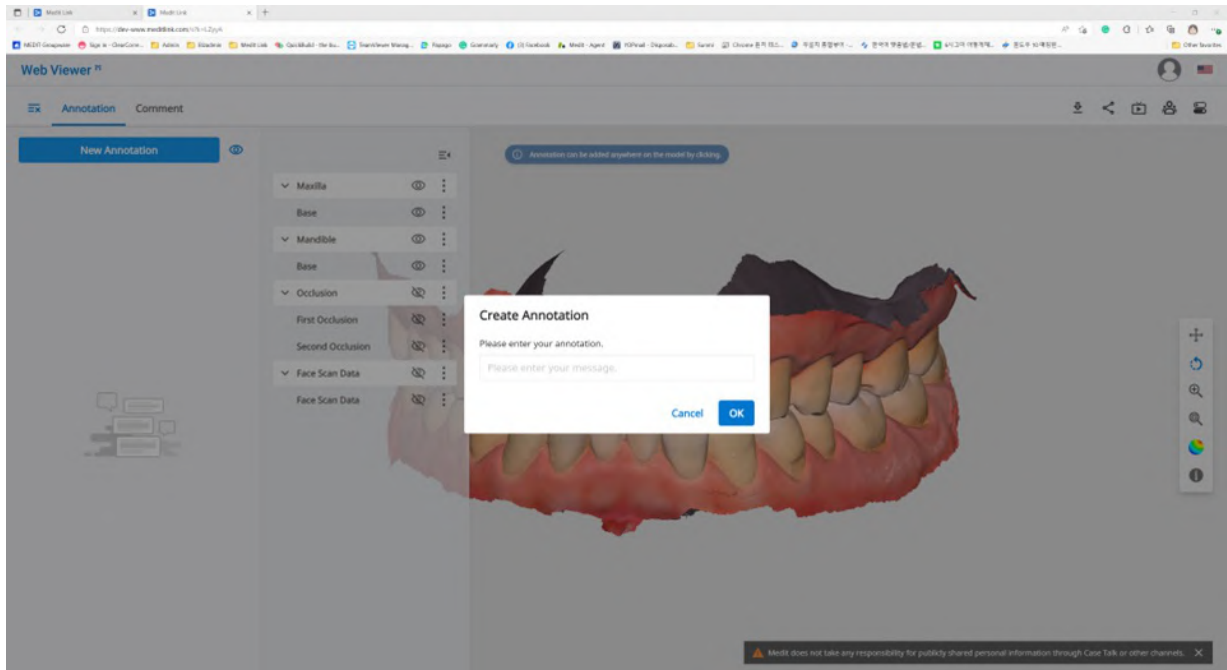

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Аннотация

1. Найдите значок меню в левом верхнем углу и выберите вкладку «Аннотация». Используйте кнопку «Новая аннотация», чтобы добавить аннотацию в любое место данных одним щелчком мыши.
2. Введите сообщение, затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить ее.

3. Вы можете использовать аннотации как простой канал связи. Щелкните созданную аннотацию, чтобы ввести ответ, и нажмите «Отправить».

Комментарии

Вы можете общаться с пользователями, имеющими доступ к ссылке, через вкладку «Комментарий» в меню Web Viewer.

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Комментарий

Совместное использование экрана в режиме реального времени

Вы можете поделиться своим экраном в режиме реального времени.

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Режим реального времени

1. Нажмите «Режим реального времени», чтобы поделиться своим экраном Web Viewer с подключенными пользователями.





2. Нажмите OK, чтобы начать совместное использование экрана.
3. Пользователи, которые получили доступ к ссылке, должны согласиться на совместное использование экрана.
4. Экран пользователя, инициировавшего совместное использование экрана, синхронно отображается с экраном пользователя, получившего запрос.


Дерево данных

Все данные группируются и отображаются в соответствии с атрибутами в дереве данных. Вы можете показывать или скрывать данные, настраивать прозрачность и т. д.

Элементы управления деревом данных

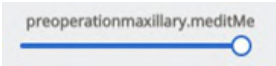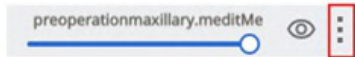Показать / Скрыть	Нажмите на значок глаза, чтобы отобразить или скрыть данные. Управляйте видимостью данных в виде группы или отдельного файла.
Непрозрачность	Наведите курсор мыши на видимый элемент, чтобы увидеть ползунок для настройки прозрачности. Используйте его, чтобы изменять прозрачность ваших данных. 
Расширенное меню	Расширенное меню находится справа от каждого элемента дерева данных. Оно включает следующие параметры:  • Показывать только это: скрывает все другие данные, кроме текущих. • Скрыть: скрывает текущие данные.

Элементы управления 3D-моделью

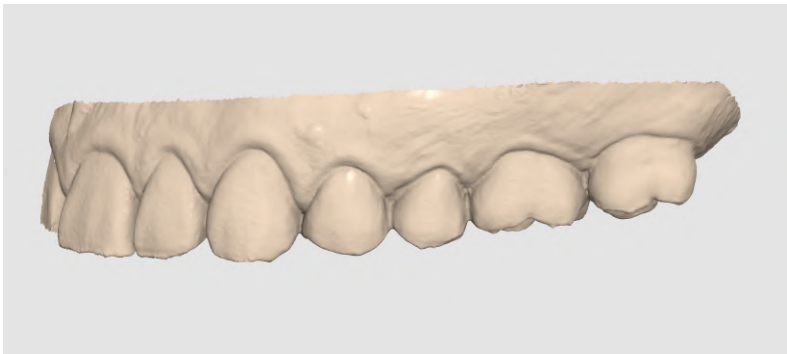⬅	Панорамировать	Переместить модель.
↺	Повернуть	Повернуть модель.
⏏	Увеличить/Уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
⏏	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
•	Режим отображения данных	Позволяет просматривать данные в цвете с матовой поверхностью (Phong-рендеринг). 
•		Позволяет просматривать данные в одном цвете. 

Partners

Вы можете искать потенциальных партнеров, чтобы запросить партнерство, а также просматривать список текущих партнеров.


Примечание

Сервисы, использующие Google Maps, недоступны в Medit Link China.

Поиск партнеров


Поиск пользователей Medit Link можно осуществлять по названию и/или адресу их организации.

По результатам поиска вы можете отправить запрос на партнерство той компании, с которой хотели бы работать.

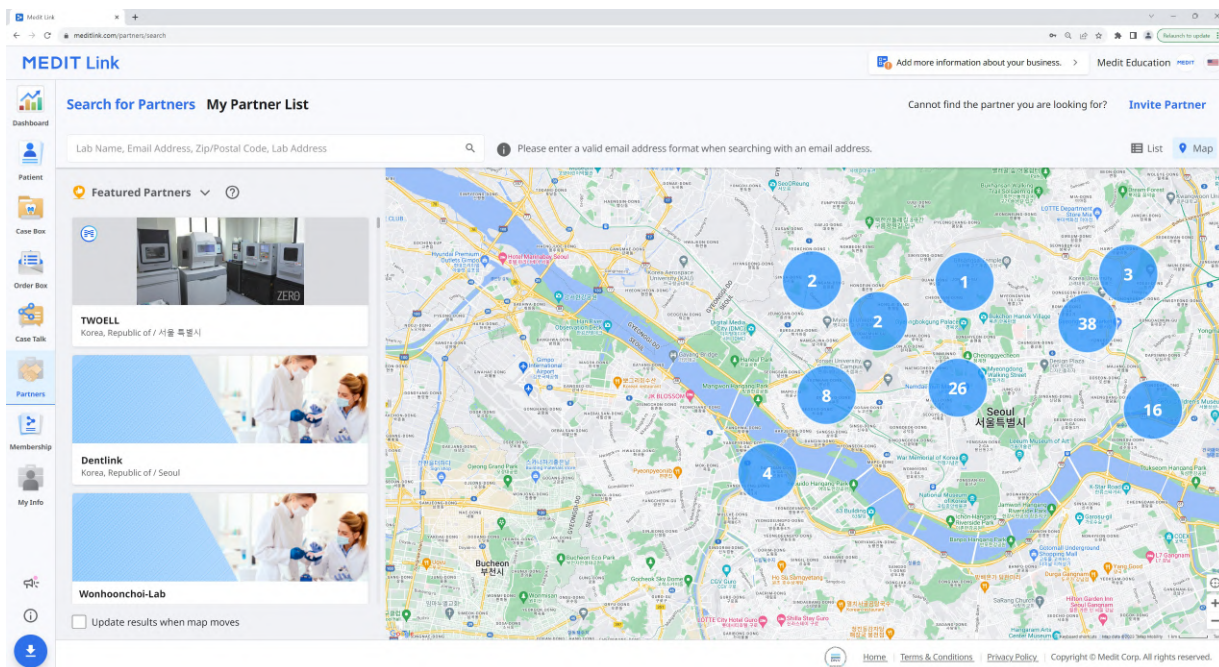

Мои партнеры

В разделе «Мои партнеры» вы можете просмотреть свои текущие партнерские отношения со всеми существующими компаниями-партнерами.

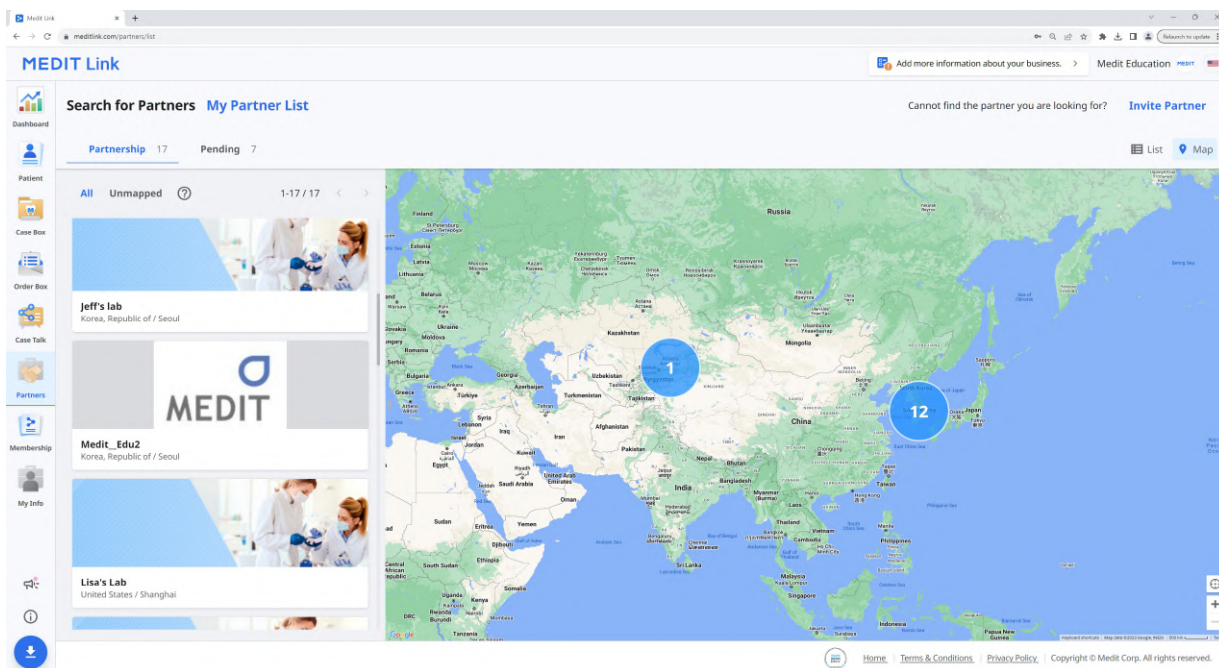

Приглашение партнера

Если у вас есть клиника или лаборатория, с которыми вы хотите работать, вы можете пригласить их присоединиться к Medit Link. Партнерство будет создано автоматически, как только эта организация примет приглашение.

1. Нажмите «Пригласить партнера» в левом верхнем углу экрана.
2. Введите адрес электронной почты компании, с которой вы хотите работать, и отправьте ей приглашение с запросом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Как только приглашенная организация примет приглашение и зарегистрируется в Medit Link, партнерство будет установлено автоматически.


Membership

Подписка

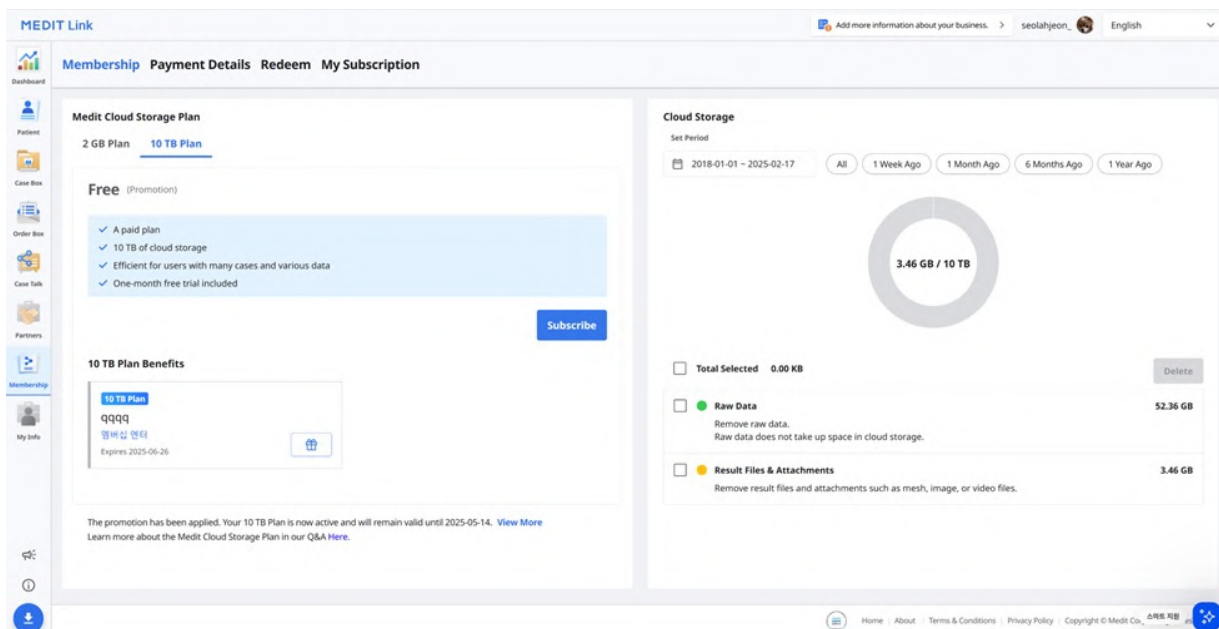

Medit Cloud Storage Plan

Вы можете ознакомиться с тем, что предлагает каждый тарифный план, включая купоны на скидку и ваучеры, а также просмотреть текущий статус своей подписки. Кроме того, в любой момент вы можете обновить тарифный план или отменить подписку.

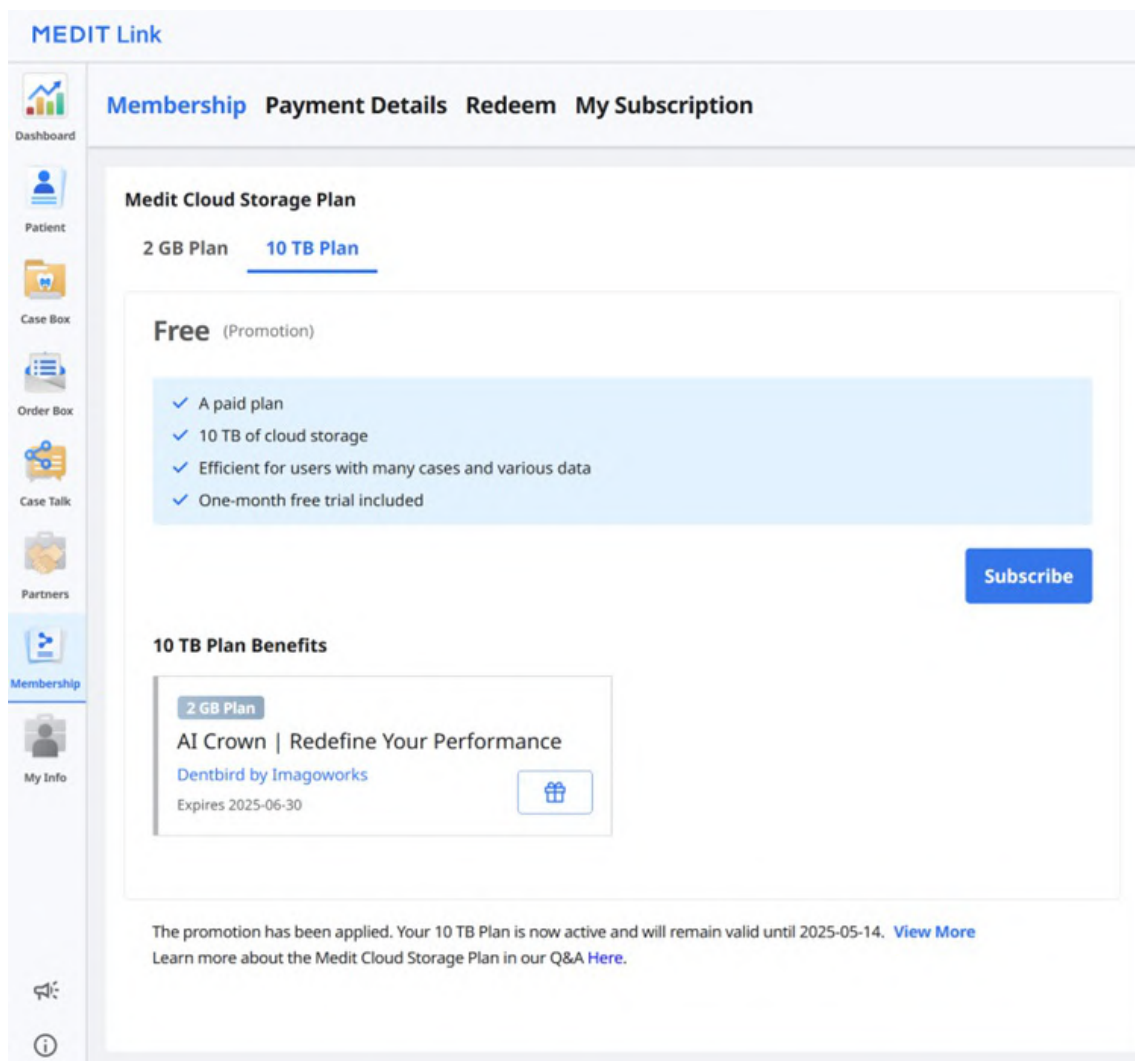

Medit Link предлагает следующие тарифные планы облачного хранения данных:

2 GB Plan

- Бесплатный стандартный тарифный план для всех зарегистрированных пользователей
- 2 GB облачного хранилища
- Для новых пользователей

10 TB Plan

- Платный тарифный план
- 10 TB облачного хранилища
- Для пользователей с большим количеством проектов и различных данных
- Бесплатная пробная версия на один месяц


	2 GB Plan	10 TB Plan
Облачное хранилище	2 GB	10 TB
Ежемесячная оплата	Бесплатно	\$9,99/месяц
* В облачном хранилище необработанные данные не включаются в объем используемого пространства.		

Примечание

Тарифные планы будут доступны в Medit Link China. До официального выпуска этой функции вы можете пользоваться тарифным планом 10 TB Plan бесплатно.

Облачное хранилище

В правой части окна вы можете управлять своим облачным хранилищем.

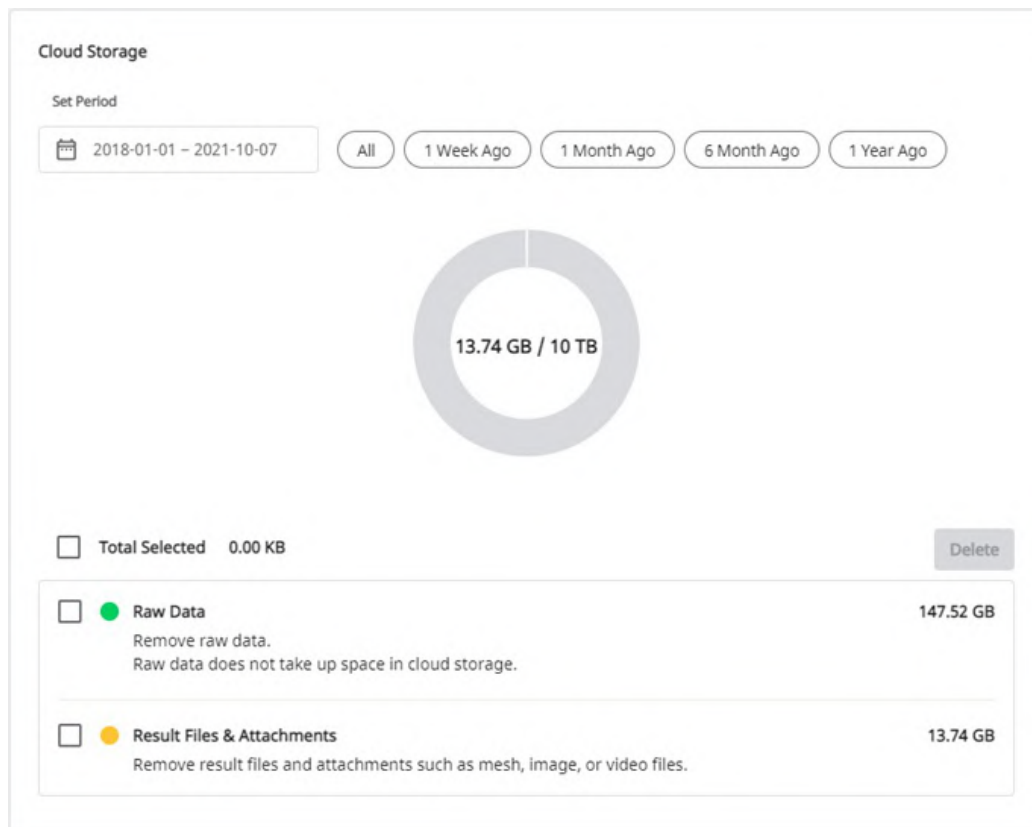

Установка периода	Установите определенный период для удаления данных, созданных в течение этого периода времени. • Все: показывает все файлы. • 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя. • 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц. • 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев. • 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.
Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Однако, при необходимости, отсюда можно управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложения занимают место в облаке. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Подписка

Если в настоящее время вы используете тарифный план 2 GB Plan или 10 TB Plan с промокодом, то можете оформить подписку на тарифный план 10 TB Plan.

Оплата осуществляется с помощью сервиса Stripe (www.stripe.com).

1. Перейдите в раздел Подписка > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan и нажмите кнопку «Подписаться».

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Просмотрите описание тарифного плана 10 TB Plan и снова нажмите «Подписаться».

Subscribe Membership

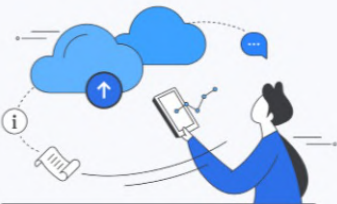

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. Проверьте цену и условия и введите информацию, необходимую для оплаты. Затем нажмите «Подписаться».

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

Subtotal

\$9.99

👉 1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax ⓘ

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MASTRO

AMERICAN EXPRESS

JCB

MM / YY

CVC



Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

▼

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by **stripe**

Terms

Privacy




Invoice

Отмена подписки

Вы можете отменить подписку в любой момент. После отмены подписки вы по-прежнему сможете использовать тарифный план 10 TB Plan в течение оставшихся дней оплаченного месяца. Начиная со следующего платежного дня ваш тарифный план будет изменен на тарифный план 2 GB Plan, а объем облачного хранилища будет ограничен 2 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование файлов не будет производиться, и функции оформления заказов и совместного использования данных станут недоступны.

1. Нажмите «Отписаться».
2. Нажмите «Отменить подписку».

Cancel Subscription

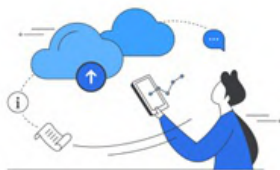

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Чтобы подтвердить, что вы хотите отказаться от подписки, снова нажмите «Отменить подписку» в новом всплывающем окне.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Ваша подписка отменена.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Начиная со следующего платежного дня ваш тарифный план будет изменен на тарифный план 2 GB Plan, а объем облачного хранилища будет ограничен 2 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование файлов не будет производиться, и функции оформления заказов и совместного использования данных станут недоступны.

Моя подписка

В разделе «Моя подписка» вы можете просмотреть подробную информацию о своей текущей подписке, а также отменить ее или оформить повторно. Кроме того, здесь вы также можете изменить способ оплаты, который будет применяться начиная со следующего запланированного платежа.

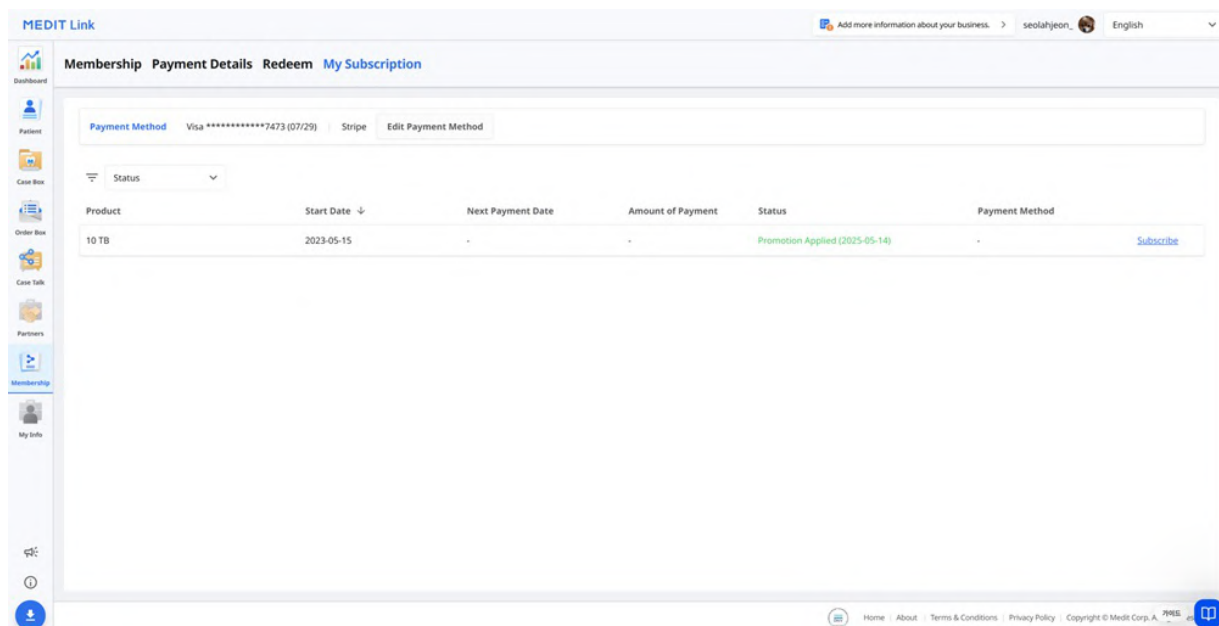

Подробнее


Наименование	Описание
Продукт	Отображает тип подписки.
Дата начала	Отображает дату начала подписки или промоакции.
Дата следующего платежа	Отображает дату следующего платежа.
Сумма платежа	Отображает сумму платежа.
Статус	Подписка • Вы подписаны: подписка активна. • Подписка истекает: подписка не будет продлена в следующую дату оплаты и будет отменена. • Подписка истекла: подписка завершена. Промоакция • Промоакция применена: промокод активен. • Ожидается активация промоакции: промокод ожидает активации. • Срок действия промоакции истек: срок действия промокода истек.
Способ оплаты	Отображает последние четыре цифры карты, использованной для оплаты.

Возобновление подписки


Наименование	Описание
Тарифный план облачного хранилища	Нажмите кнопку подписки, чтобы повторно оформить подписку на тарифный план 10 TB Plan.
Тарифный план подписки на приложения	Войдите в приложение, чтобы повторно оформить подписку.

Как добавить способ оплаты

1. Нажмите «Редактировать способ оплаты».

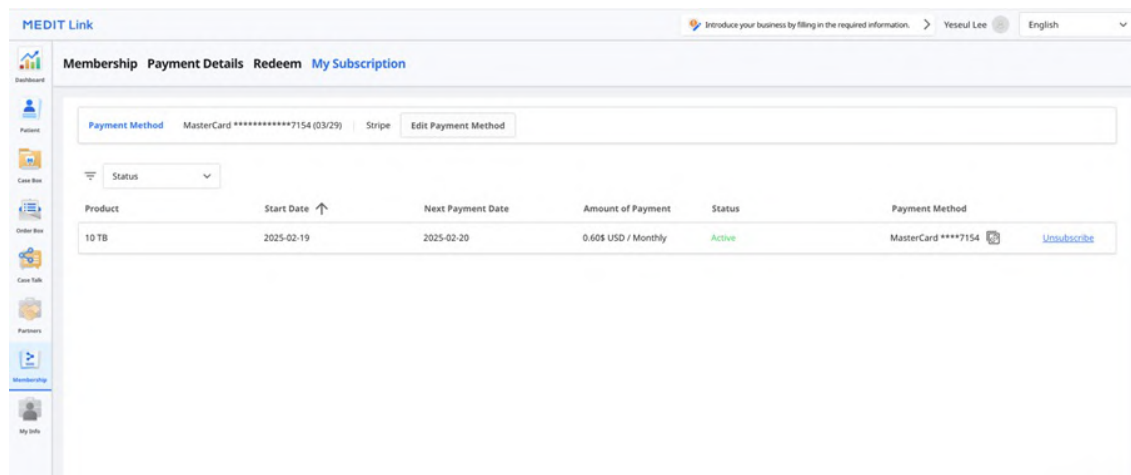

2. Нажмите «Добавить способ оплаты».

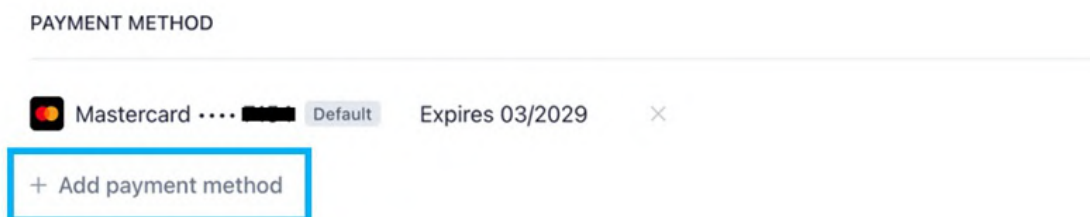

3. Введите необходимую информацию и нажмите «Добавить».

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234 

Expiration date MM / YY Security code CVC 

Country

South Korea 

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. вновь добавленный способ оплаты будет установлен в качестве используемого по умолчанию и будет использован для следующего платежа.

PAYMENT METHODS

	Visa •••• 4242 Default	Expires 04/2044	
	Visa •••• 4242	Expires 05/2025	

+ Add payment method

Как изменить способ оплаты

1. В диалоговом окне выставления счетов нажмите на значок расширенного меню рядом с тем способом оплаты, который вы хотите изменить.

PAYMENT METHODS

	Visa •••• 4242 Default	Expires 04/2044	
	Visa •••• 4242	Expires 05/2025	

+ Add payment method

2. Нажмите «Использовать по умолчанию», чтобы установить выбранную карту в качестве способа оплаты по умолчанию.

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242 Default

Expires 04/2044 ×

 Visa •••• 4242

Expires 05/2025 ...

+ Add payment method

Make default

Delete

Использование промокода

Для получения бесплатного доступа к тарифному плану 10 TB Plan можно воспользоваться промокодом.

Подробнее

MEDIT Link

[Add more information about your business.](#) > seolah_jeon_dev_admin English ▾

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Register Redeem Code

Register

Redeem Code

All ▾

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4A87	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel


< 1 >

[Home](#) | [About](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. [GUIDES](#) 

Наименование	Описание
Продукт	Отображает тарифный план, к которому применяется промоакция.
Промоакция	Отображает название промоакции.
Номер кода	Отображает номер промокода.
Дата регистрации	Отображает дату регистрации промокода.
С	Отображает дату начала промоакции.
До	Отображает дату окончания срока действия промоакции.
Статус	- Registered: промокод добавлен и теперь доступен. - Waiting: промокод ожидает активации. - Activated: промокод активен. - Used: срок действия промокода истек.

Регистрация промокода

1. Введите промокод и нажмите «Зарегистрировать».
2. Прочтите уведомление и выберите во всплывающем диалоговом окне «Зарегистрировать» или «Применить».
 - **Зарегистрировать**: регистрирует промокод. Вы можете активировать и использовать промокод позже после регистрации.
 - **Применить**: регистрирует и активирует промокод. Скидка по промокоду начинает действовать немедленно.

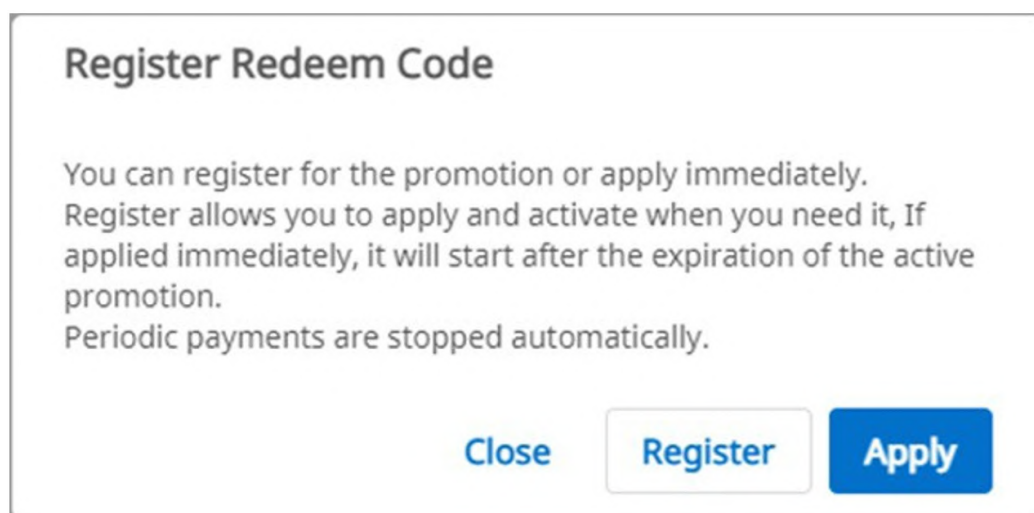

Активация промокода

Вы можете зарегистрировать несколько промокодов, но вам необходимо активировать тот, который вы хотите использовать.

1. Нажмите кнопку «Активировать» рядом с кодом, который вы хотите использовать.
 - Если код со статусом Activated отсутствует, тот код, который вы выберете, будет применен немедленно.


- Если уже активированный код существует, вновь выбранный код переходит в статус Waiting. Когда истечет срок действия текущего активированного промокода, новый промокод, находящийся в статусе Waiting, будет автоматически активирован.

Примечание

Только один промокод можно активировать, и только один промокод может находиться в статусе Waiting.

Детали оплаты

На вкладке «Детали оплаты» вы можете просмотреть свои подписки и историю платежей.

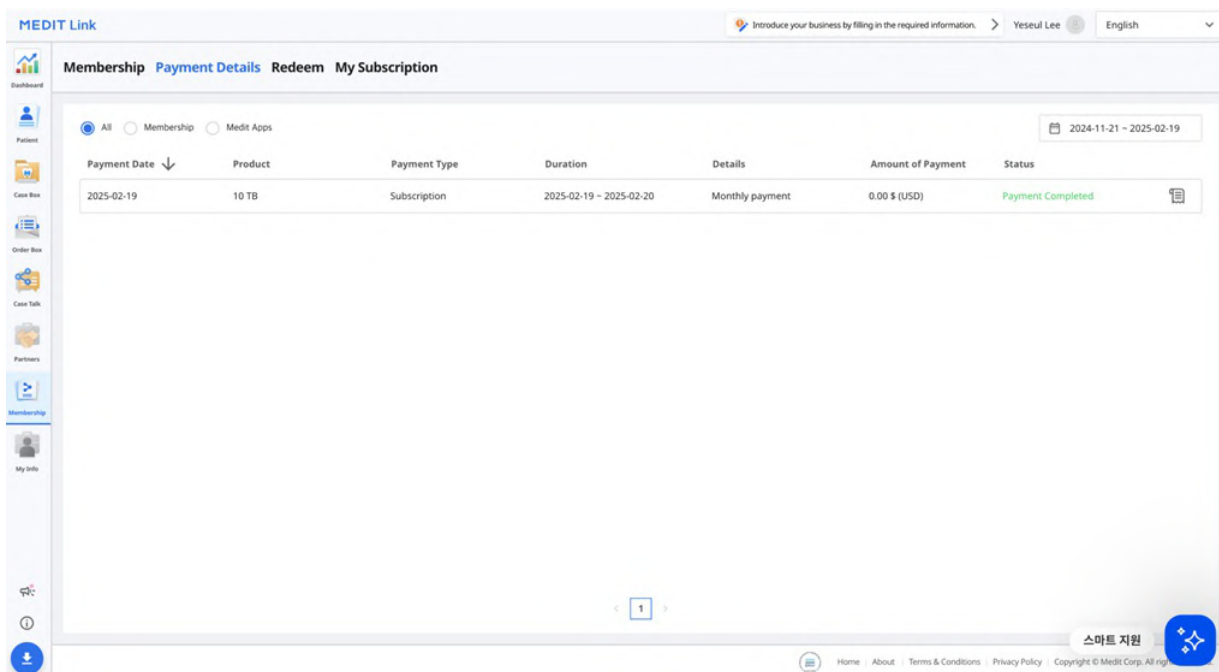

MEDIT Link | Introduce your business by filling in the required information. > Yeseul Lee | English

Membership | Payment Details | Redeem | My Subscription

☒ All
 ☐ Membership
 ☐ MEDIT Apps
 2024-11-21 ~ 2025-02-19

Payment Date ↓	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2025-02-19	10 TB	Subscription	2025-02-19 ~ 2025-02-20	Monthly payment	0.00 \$ (USD)	Payment Completed

1


스마트 지원

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © MEDIT Corp. All rights reserved.

Наименование	Описание
Дата платежа	Отображает дату платежа.
Продукт	Отображает приобретенный тарифный план или приложение.
Тип платежа	Отображает тип платежа: - Подписка - Единовременный платеж
Период	Отображает период подписки.
Подробнее	Отображает подробную информацию о платеже.
Сумма платежа	Отображает стоимость подписки или единовременной покупки.
Статус	- Payment Completed: платеж обработан. - Payment Failed: платеж не обработан. - Payment Incomplete: платеж не завершен. Нажмите «Оплатить сейчас», чтобы продолжить. - Waiting: ожидается платеж для продления подписки.

Просмотр деталей счета

Нажав на расположенный справа значок квитанции, вы можете просмотреть счета на оплату и квитанции.

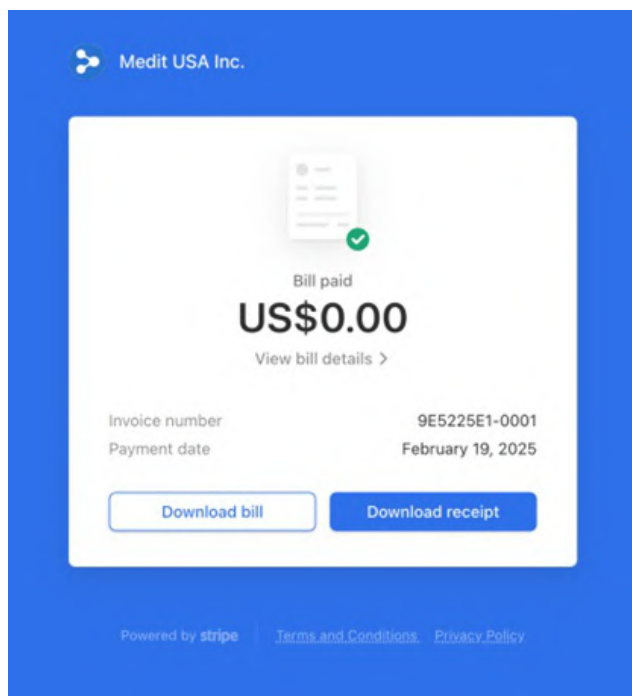

Нажмите «Просмотреть детали счета» для получения подробной информации о платеже.

Medit USA Inc.



Bill paid

US\$0.00

[View bill details](#)

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

[Download bill](#)

[Download receipt](#)

Powered by [stripe](#)

[Terms and Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Quantity 1 piece

US\$0.60

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Моя учетная запись

В разделе My Info вы можете просмотреть и отредактировать указанную при регистрации информацию, а также проверить статус своей подписки.

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner



Account Information

Email Address

[Change Email Address](#)

Password

[Change Password](#)

Name

Language

Country/Region

 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)

Здесь вы можете просмотреть и отредактировать информацию о вашей клинике или лаборатории. Этот раздел доступен только для учетных записей администратора.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** **My Scanner**

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

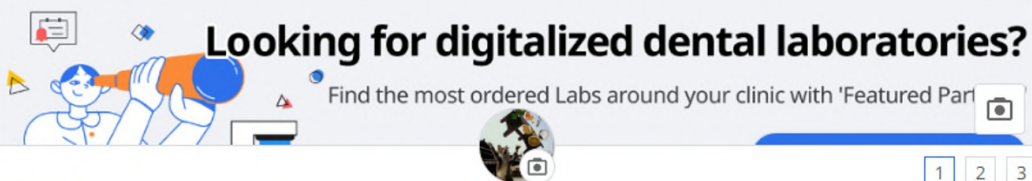

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Мой сканер

Здесь вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах для данной учетной записи.

Наименование	Описание
Тип	Отображает название модели.
Серийный номер	Отображает серийный номер устройства.
Время использования	Показывает, как долго использовалось устройство.
Статус	Отображает статус регистрации устройства: - Статус «Зарегистрирован» означает, что сканер успешно подключен и зарегистрирован. - Статус «Не зарегистрирован» означает, что сканер больше не зарегистрирован. Если сканер зарегистрирован в другой группе, он потеряет свою регистрацию в текущей группе.
Последнее подключение	Отображает дату последнего подключения.
Последняя калибровка	Отображает дату последней калибровки.
Дата начала срока действия гарантии	Отображает дату активации гарантии.
Дата окончания срока действия гарантии	Отображает дату истечения срока гарантии.
Осталось дней	Отображает количество дней, оставшихся до истечения срока гарантии.
Купить	Позволяет приобрести и продлить гарантию.
Удалить значок	Позволяет удалить сканер из списка.

Другое меню

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Связанные веб-сайты

Здесь вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Medit Academy, канал Medit Academy на YouTube и Справочный центр Medit.

65

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Скачать приложение **Medit Link**

Здесь вы можете скачать последнюю версию установщика программы из интернета. Это может быть полезно, если вы потеряли установщик, поставляемый с продуктом, или ваш установщик устарел.

Примечание

Если у вас есть подключение к интернету Medit Link обновляется автоматически.



Windows

macOS

Обзор

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Строка заголовка	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Строка заголовка .
2	Меню	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Меню .
3	Инструменты и функции	Более подробную информацию смотрите в разделах Приложение Medit Link > Просмотрщик файлов и Приложение Medit Link > Параметры просмотра .
4	Список проектов	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Фильтрация и поиск .

В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.

Тип учётной записи		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Учетная запись клиники	Администратор	O	O	O	X	X	O	O	O
	Пользователь	O	O	O	X	X	O	O * Только функция восстановления	O
Учетная запись лаборатории	Администратор	X	X	X	O	O	O	O	O
	Участник	X	X	X	O	O	O	O * Только функция восстановления	O

Строка заголовка

Строка заголовка обеспечивает быстрый доступ к таким разделам, как информация учетной записи, уведомления, оповещения и обновления, настройки и статус сетевого соединения.



Моя информация

Раздел «Моя информация» содержит основную информацию о пользователе, такую как изображение профиля, название клиники или лаборатории, адрес электронной почты и имя пользователя.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Уведомления

В этом разделе вы можете увидеть уведомления, связанные с партнерством, заказами и рабочим процессом.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	Установите флажок, чтобы отображались только непрочитанные сообщения.
2	Щелкните любое уведомление, чтобы мгновенно перейти к соответствующему проекту или веб-странице.

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Настройки

Диалоговое окно настроек позволяет пользователям настраивать программу.

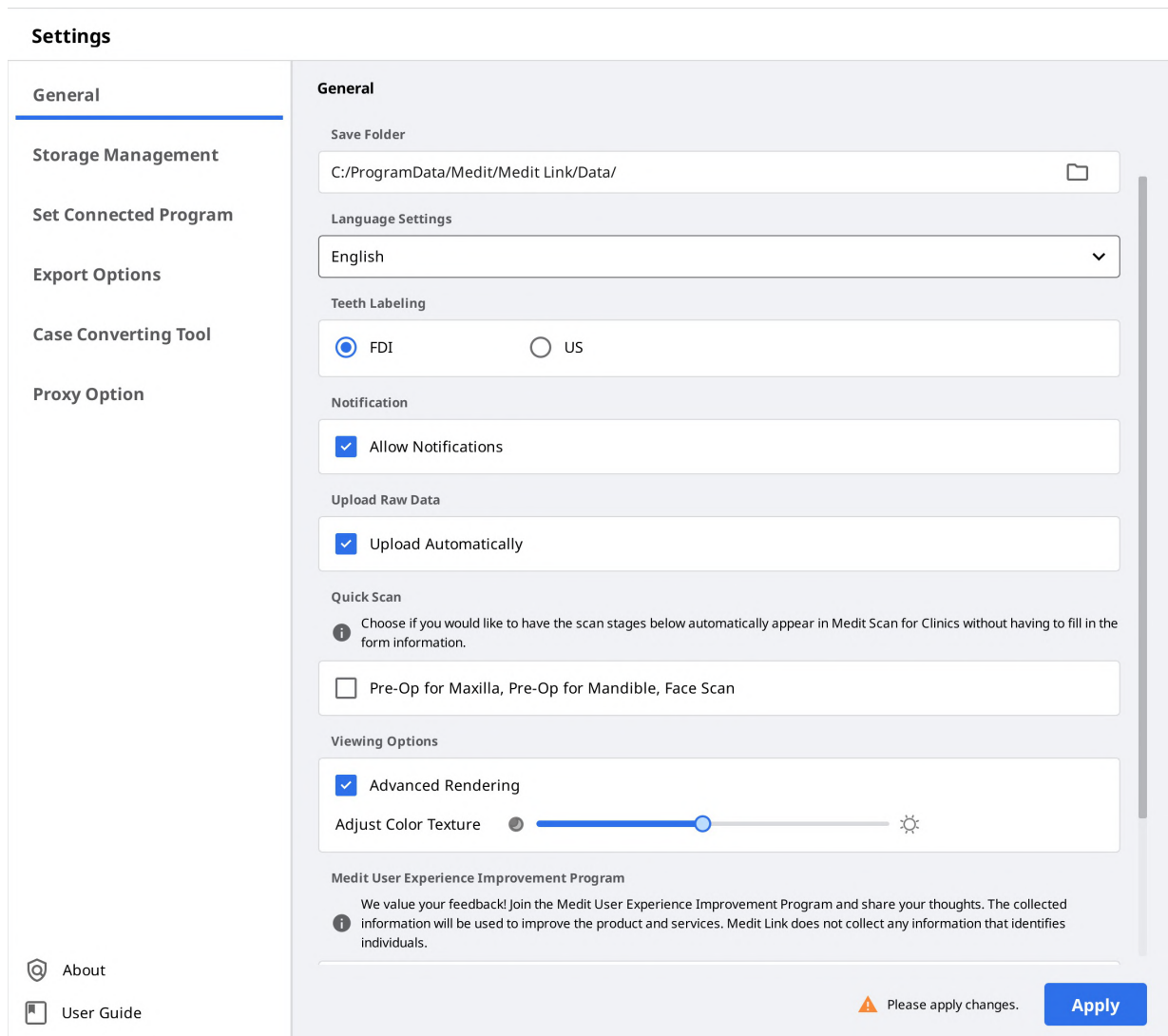

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

При неудовлетворительном сетевом подключении вы можете столкнуться со следующими ограничениями:

- Некоторые функции, такие как заказ проекта, создание проекта, общий доступ через Case Talk и облачная синхронизация, будут ограничены.
- Общая производительность сервиса может быть снижена из-за влияния сетевой среды.

В этом случае вы можете перейти в офлайн-режим для выполнения базовых задач, а затем, после подключения к сети, использовать функции, которые требуют интернет-соединения.

Примечание

Символ сети указывает на скорость отклика между текущей областью и AWS (веб-сервисом Amazon). Он не отображает скорость вашей сети. Иногда он может отображать статус как неудовлетворительный, даже если скорость вашей сети достаточно высока.

Если для других процессов используется та же сеть, скорость сети может быть низкой, и общая производительность Medit Link также может быть снижена. В этом случае, пожалуйста, не используйте сеть совместно с другими процессами.

Например, функция «Загрузить необработанные данные» занимает огромную часть сетевого процесса. Если значок отображает статус, как неудовлетворительный, перейдите в Настройки > Загрузить необработанные данные и отключите функцию «Автоматическая загрузка».

Настройки

Общие

Содержит параметры для общей настройки системы.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Папка для сохранения	Задайте папку для хранения результатов данных, созданных в Medit Link и подключенных программах.	
Папка установки приложений	Укажите путь установки для приложений Medit Apps и партнерских приложений, доступных в App Box.	
Настройки языка	Выберите язык программы.	
Маркировка зубов	Выберите систему маркировки зубов между FDI и US.	
Уведомления	Если отмечена эта функция, вы будете получать уведомления об обновлениях программы.	
Загрузить необработанные данные	Если отмечена эта функция, необработанные данные автоматически загружаются в облако. Это помогает создавать резервные копии исходных данных и выполнять бесшовное сканирование при использовании Medit Link с той же учетной записью на другом ПК. Резервное копирование исходных данных в облаке применяется только к данным, полученным в Medit Scan for Clinics.	
Быстрое сканирование	Выберите, хотите ли вы, чтобы указанные ниже этапы сканирования автоматически отображались в Medit Scan for Clinics без необходимости заполнения информации формы. • Предоперационная верхняя челюсть • Предоперационная нижняя челюсть • Сканирование лица	
Параметры просмотра	Расширенный рендеринг	Если отмечена эта функция, 3D-модель отображается более ярко и реалистично.
	Настроить цвет текстуры	Регулирует яркость 3D-модели. * Результирующие цвета могут незначительно отличаться от цвета в Medit Link, когда вы открываете те же данные с помощью другого программного обеспечения.
Программа улучшения пользовательского опыта Medit	Присоединяйтесь к программе улучшения пользовательского опыта Medit. • Мы используем собранную информацию для улучшения наших продуктов и услуг. • Мы не собираем какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать отдельных лиц.	
Страница по умолчанию после входа в систему	Выберите меню по умолчанию, которое будет отображаться при запуске программы. • Для учетной записи клиники можно выбрать либо Patient, либо Case Box • Для учетной записи лаборатории можно выбрать либо In Box, либо Work Box	

Управление хранилищем

Просмотр и управление локальным и облачным хранилищами.

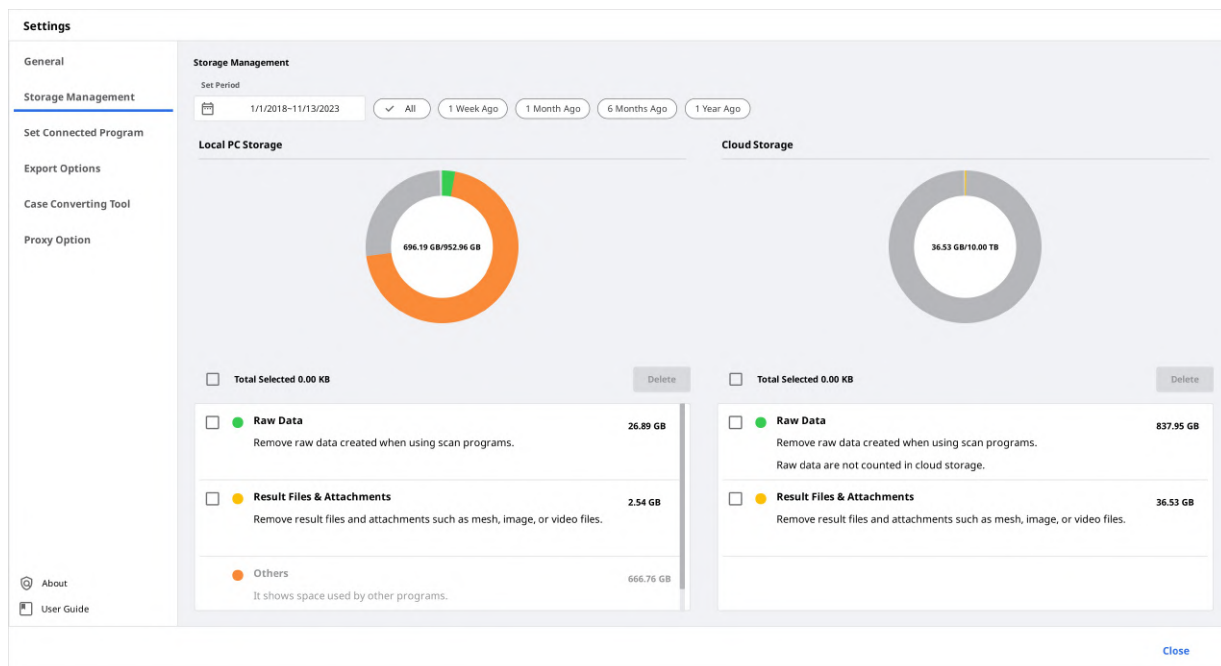

Установка периода

Установите конкретный период для удаления данных, созданных в течение указанного ниже периода времени.

- Все: показывает все файлы.
- 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя.
- 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц.
- 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев.
- 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.

Локальное хранилище

Управление дисковым пространством ПК.

Необработанные данные	Удаляет выбранные необработанные данные с ПК. Если необработанные данные уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Результаты и вложения	Удаляет с ПК файлы результатов и вложений, такие как сетка, изображения и видео. Если эти файлы уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Прочее	Показывает файлы, используемые для работы системы и других программ. Отображает объем памяти вашего ПК. Вы не можете удалить эти файлы из Medit Link.
Удалить	Удаляет выбранные файлы с ПК.


Облачное хранилище

Управление облачным хранилищем.

Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Но, при необходимости, вы можете здесь управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента и т. п.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложений занимают место в облачном хранилище. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Купить место в хранилище	Если вы используете тарифный план 2 GB Plan, подпишитесь на тарифный план 10 TB Plan, чтобы увеличить объем своего облачного хранилища.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Установить подключенную программу

Управляет программами, поддерживающими интеграцию в Medit Link.

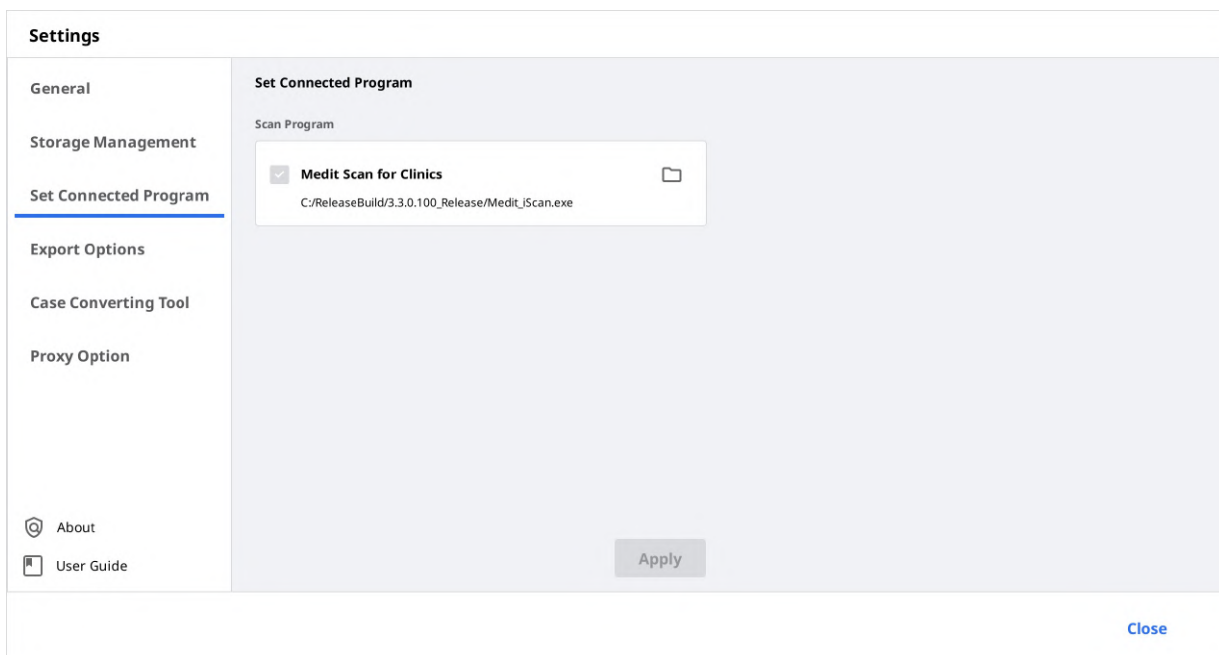

Вы можете установить следующие программы:

	Учетная запись клиники	Учетная запись лаборатории
Программа сканирования	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Примечание

Следующие сервисы недоступны для Medit Link в macOS:

- Medit Scan for Labs

Параметры экспорта

Установите, как экспортировать файлы из Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Тип	Выберите программу CAD, которую хотите использовать для проектирования. Программа скорректирует результаты на основе вашего выбора, что позволит вам продолжить проектирование без какого-либо дополнительного выравнивания осей.
Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения результатов.
Формат файла сетки	Укажите формат окончательного файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать и объединить	Сжать файлы: сжимает все результаты в один файл. Объединить файлы при экспорте: объединяет все результаты для верхней или нижней челюсти в один файл. При использовании некоторых программ, которые не могут импортировать несколько файлов и работать с ними, вы можете объединить их в один для работы в этих программах.
Варианты в случае, когда такая же папка или файл уже существуют.	Выберите действие по умолчанию для случаев, когда такое же имя папки или файла существует в целевом местоположении. • Всегда спрашивать при экспорте. • Экспортировать новый файл и перезаписать существующие файлы. Сохраненный в данный момент файл будет потерян. • Создайте папку и экспортируйте файлы.
Правило для имени папки	Определите правила для создания имени папки при экспорте файлов. Установленные правила будут применены к именованию папки, и экспортированный файл будет сохранен в созданной папке. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа
Правило для имени файла	Определите правила для имени экспортируемого файла. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа

Инструмент для преобразования проекта


Вы можете перемещать проекты между разными учетными записями, экспортируя существующие проекты учетной записи или импортируя проекты, экспортированные из других учетных записей.

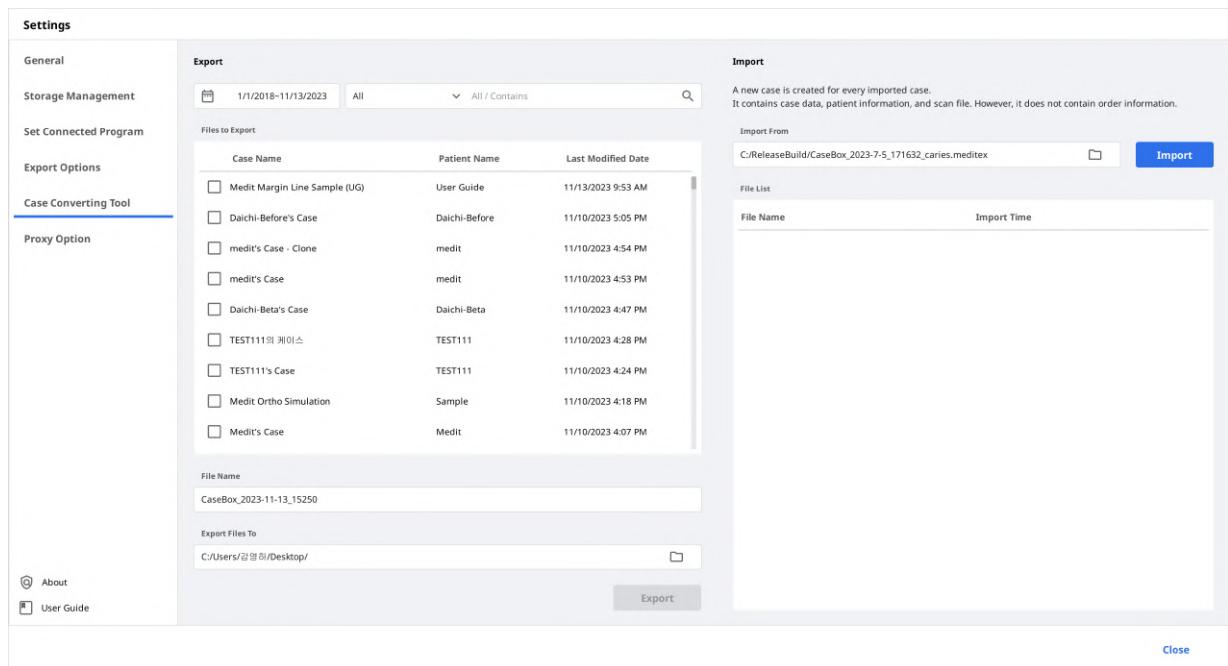


Экспорт проекта

Экспортируйте проекты текущей учетной записи на локальный компьютер.

1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

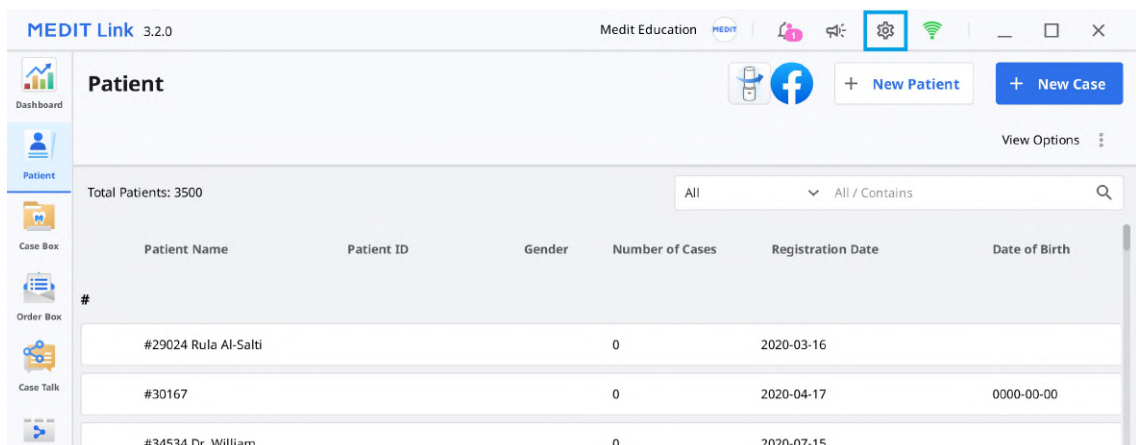

2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

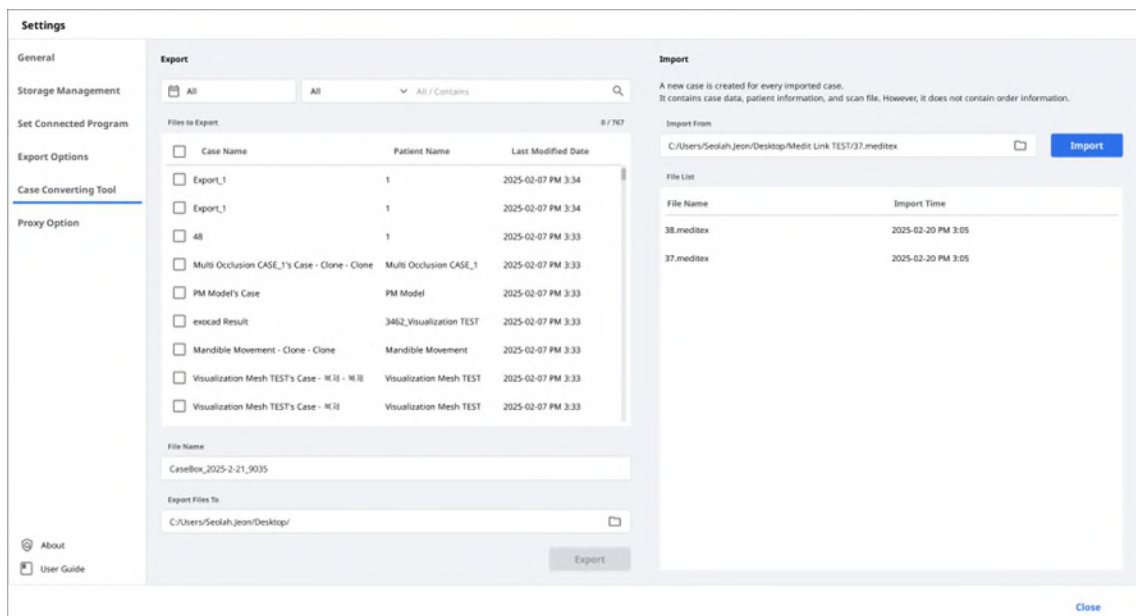

3. В разделе «Экспорт» задайте период или выполните поиск проектов для экспорта, если это необходимо.

Export

All

All / Contains

0 / 767

Patient Name

Last Modified Date

2025-02-07 PM 3:34

2025-02-07 PM 3:34

4. В разделе «Файлы для экспорта» выберите из списка проекты, которые хотите экспортировать.

Export

All

All / Contains

2 / 767

Files to Export

	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☒	Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. Задайте имя файла, отредактировав название проекта в поле «Имя файла».
6. Установите папку назначения для экспорта выбранных проектов.
7. Нажмите «Экспортировать».
8. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которую экспортируется файл.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. Экспортированные проекты сохраняются в формате файла .meditex.

Импорт проекта


1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

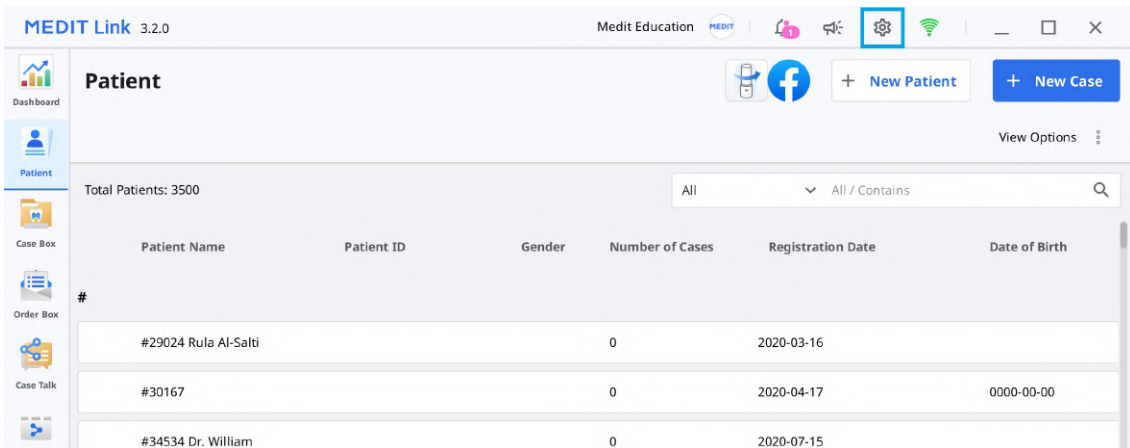

2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

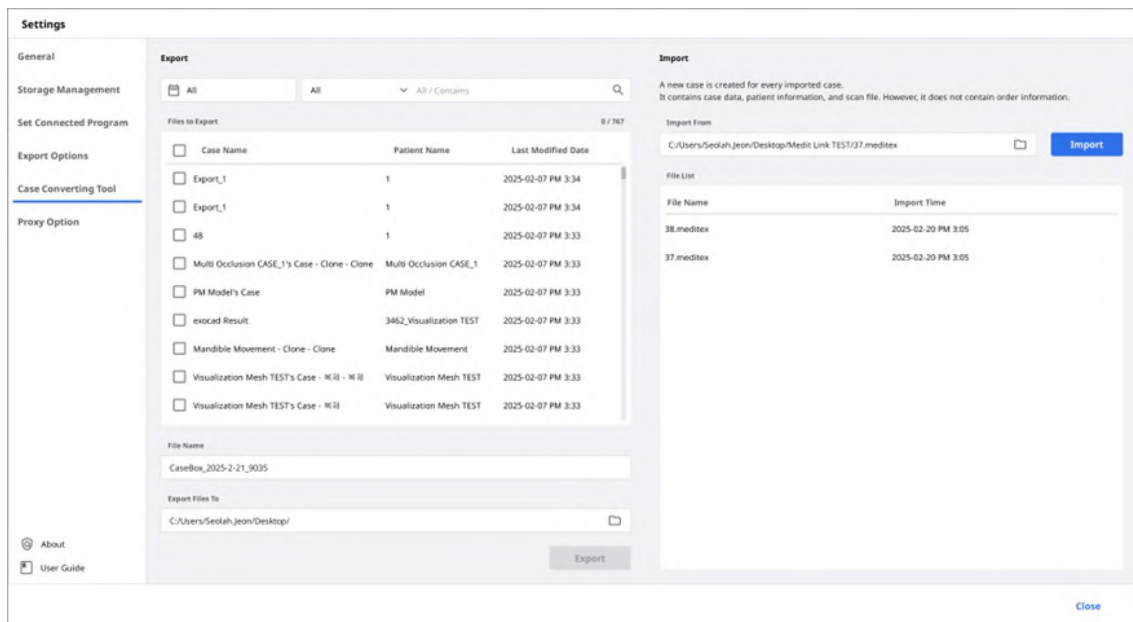

3. В разделе «Импорт» нажмите на значок папки, чтобы найти на компьютере файл .meditex, который вы хотите импортировать.

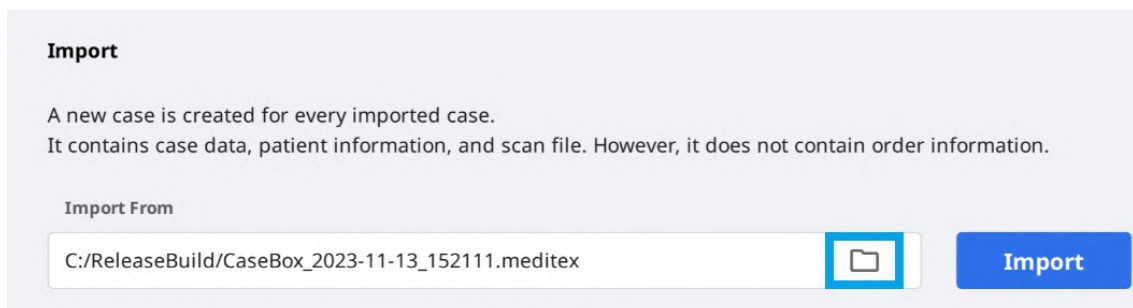

4. Нажмите кнопку «Импортировать» и отметьте файлы для импорта в списке ниже.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

- Импортированный проект также появится в вашем Case Box (учетная запись клиники) или Work Box (учетная запись лаборатории).

Параметры прокси

В некоторых ограниченных сетевых средах можно изменить сетевые настройки.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

О программе

Показывает подробную информацию о Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Руководство пользователя


Предоставляет руководство пользователя для Medit Link.

Для открытия руководства пользователя требуется подключение к интернету.

Меню

Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

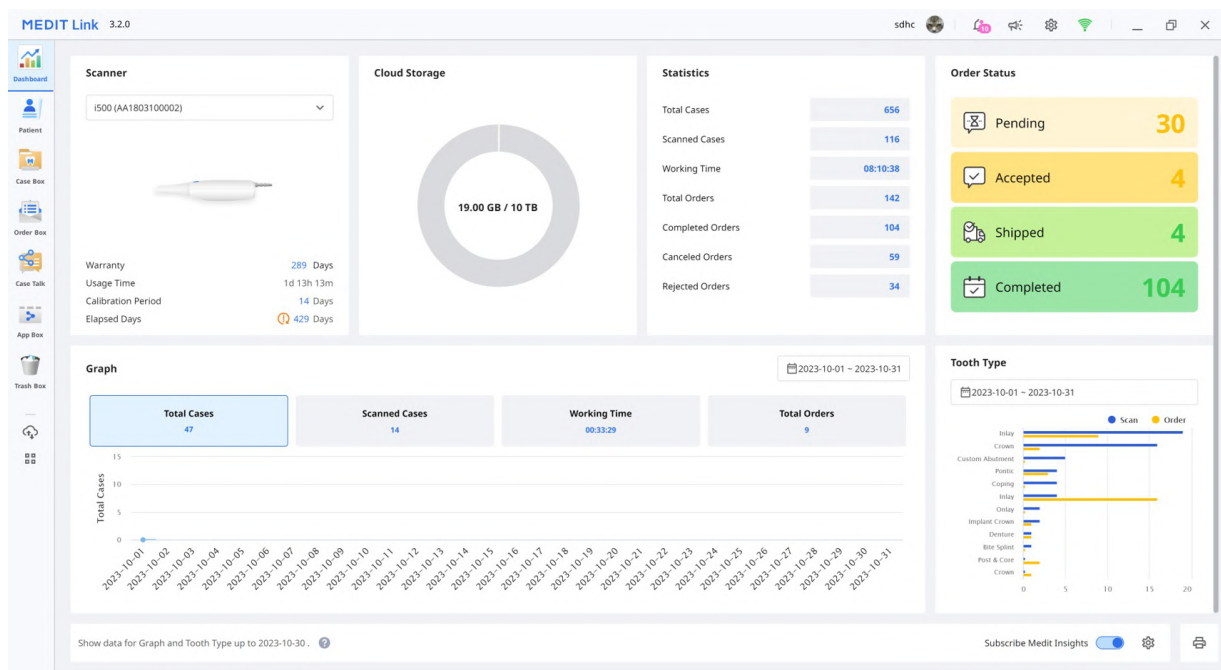

Примечание

Более подробную информацию об использовании Dashboard и Medit Insights смотрите в разделе [Веб-сервис Medit Link > Dashboard](#).

Patient

В меню Patient вы можете добавлять, редактировать, удалять или объединять данные пациентов.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
agdsfsgdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Добавление нового пациента

1. Нажмите «Новый пациент».

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address*

Memo

Cancel Save


2. Заполните необходимую информацию в диалоговом окне «Новый пациент», затем нажмите «Сохранить».

Удаление пациента

Примечание

Вы можете удалить пациента только в том случае, если по нему нет проектов.

1. Выберите пациента для удаления из списка.

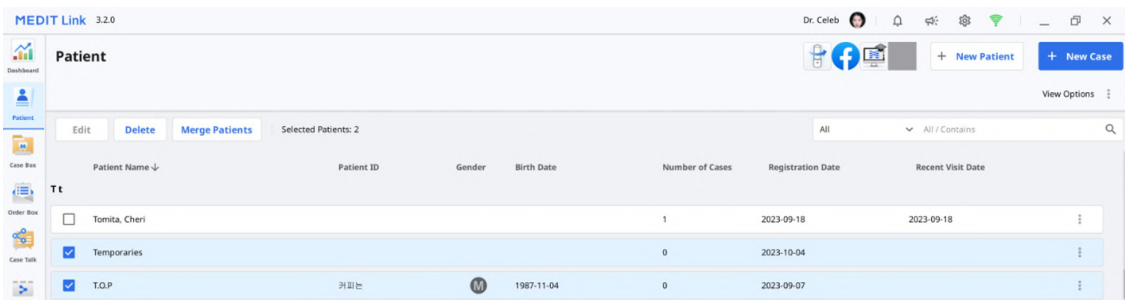


2. Нажмите «Удалить».

Объединение пациентов

Вы можете объединить все проекты нескольких пациентов, объединив их под именем одного пациента.

1. Выберите пациентов, которых вы хотите объединить, из списка.

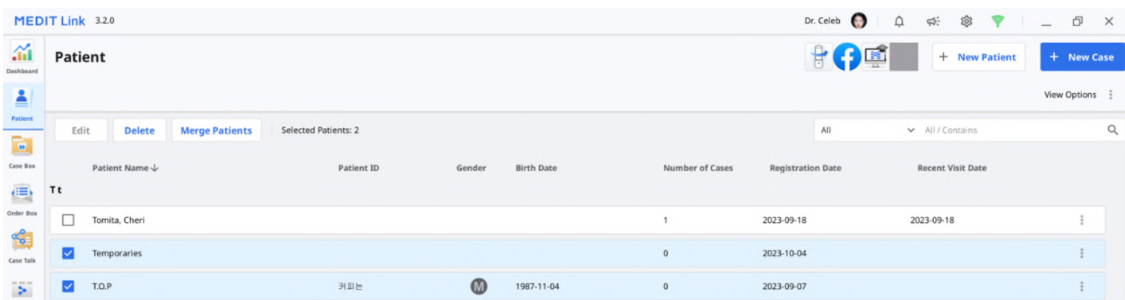

2. Нажмите «Объединить пациентов».
3. Выберите целевого пациента, под именем которого вы хотите объединить все проекты.
4. Все проекты объединяются под именем целевого пациента, и информация о целевом пациенте сохраняется.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Нажмите «Применить», чтобы завершить объединение.

Case Box/Work Box

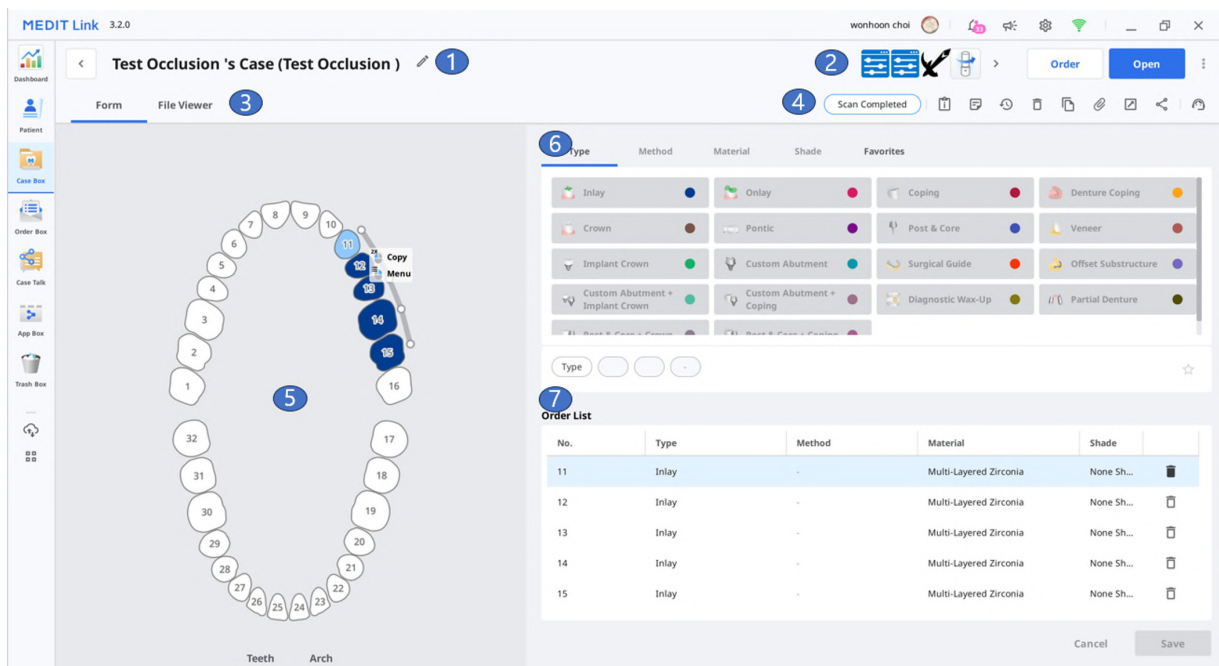

1	Название проекта и имя пациента.
2	Отображение основных доступных функций: кнопки «Сканировать» или «Открыть», кнопка «Заказ», значки приложений.
3	Доступные вкладки: «Форма» и «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами.
5	Пользовательский интерфейс регистрации формы для выбранной программы сканирования.
6	Выбор информации о типе/методе/материале/оттенке для выбранного номера зуба.
7	Информация о типе/методе/материале/оттенке, примененных к выбранным зубам.

Вкладки в Case Box/Work Box


Форма	Просмотрщик файлов
Вкладка «Форма» предоставляет пользовательский интерфейс для ввода основной информации для сканирования, такой как тип, метод, материал для номеров зубов, и параметров сканирования. Введенная вами информация передается в подключенную программу сканирования и используется в качестве информации о заказе при размещении заказа у вашего партнера.	Просмотр файлов результатов, созданных программами сканирования и CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Функции в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие функции:

	Статус проекта	Показывает статус проекта.
	Перейти в Order Box/In Box	Предоставляет ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.
	История проекта	Предоставляет подробную информацию об истории проекта. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Удалить	Удаляет проект. Нельзя удалять заказанные проекты или проекты, созданные в офлайн-режиме.
	Клонировать	Создает дубликат текущего проекта в Case Box. Все данные будут скопированы в клонированный проект. Эта функция помогает реплицировать информацию о лечении для того же пациента или сделать дополнительный заказ с той же информацией или файлами.
	Прикрепить	Прикрепляет файлы различных форматов.
	Экспортировать	Экспортирует файлы результатов сканирования или CAD на локальный ПК. При экспорте файлов можно выбрать предпочтительный формат файла. Экспортированные файлы могут быть использованы в CAD- и CAM-программах для дальнейшей работы.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. Пользователи с общей ссылкой могут получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ. Свободно делитесь ссылкой со всеми или только с определенными людьми. Для защиты личной информации можно установить ПИН-код или срок действия ссылки.
	Отправить заявку в поддержку	Переводит на страницу Справочного центра Medit для отправки запроса в службу поддержки.

Order Box/In Box

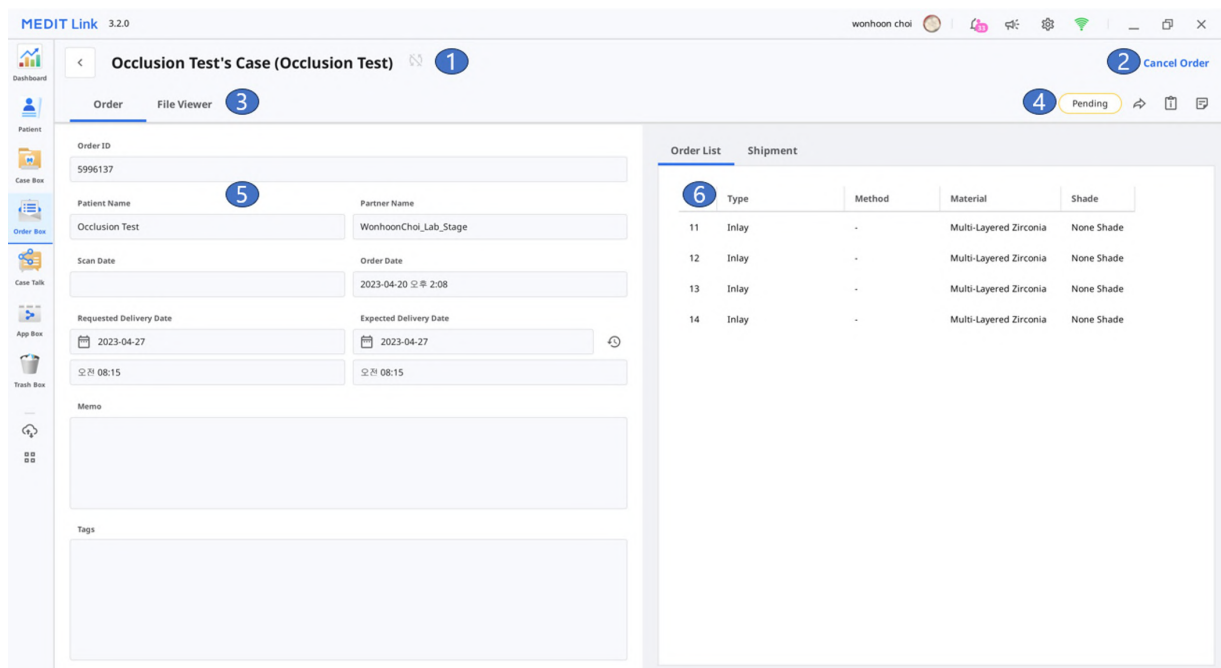

1	Название проекта и имя пациента.
2	Функции для управления заказами (прием/отмена; доставка/получение).
3	Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п.
5	Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги.
6	Информация о заказанном продукте и статусе доставки.

Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация, относящаяся к заказу, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

Примечание

Для использования Case Talk требуется интернет-соединение.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah-jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.

App Box

App Box содержит различные программы, которые дополняют ваш основной рабочий процесс сканирования и повышают производительность. Вы можете скачать и установить предлагаемые приложения для создания стоматологических аппаратов, анализа данных сканирования, помощи во время консультации или оптимизации рабочего процесса.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now >](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now >](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**
Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format
[Update](#)
- Medit Smile Design**
Simulation of teeth movement for orthodontic cases
[Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**
Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...
[Install](#)
- Action Gate (ヨシダ・Yoshid...)**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- EasyRx Integration**
Universal orthodontic LMS
[Install](#)
- Open Dental Integration**
Quality software for dental offices
[Install](#)
- iie systems connector**
PRM specialized for orthodontics
[Install](#)
- OneClick Integration App**
Osstem's easy-to-use PMS
[Install](#)
- i-Pro Integration**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- LOGOSw Integration**
Add a link between LOGOSw and Medit Link
[Install](#)
- DentalCAD Integration**
Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.
[Install](#)
- Action Gate (ヨシダ・Yoshid...)**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- Andcom Integration**
Convenient dental PMS
[Install](#)

Все


На вкладке «Все» отображается список всех предоставленных приложений, включая оригинальные приложения, разработанные компанией Medit (Medit Apps), и партнерские приложения, которые представляют собой приложения для интеграции с партнерами Medit из различных секторов цифровой стоматологии, таких как 3D-печать, программное обеспечение CAD/CAM и т. д.

Medit Apps

На вкладке Medit Apps отображаются только оригинальные приложения, разработанные компанией Medit.

Скачано

На вкладке «Скачано» отображается список установленных в данный момент на компьютере приложений, а также приложений, которые ранее скачивались под учетной записью пользователя.

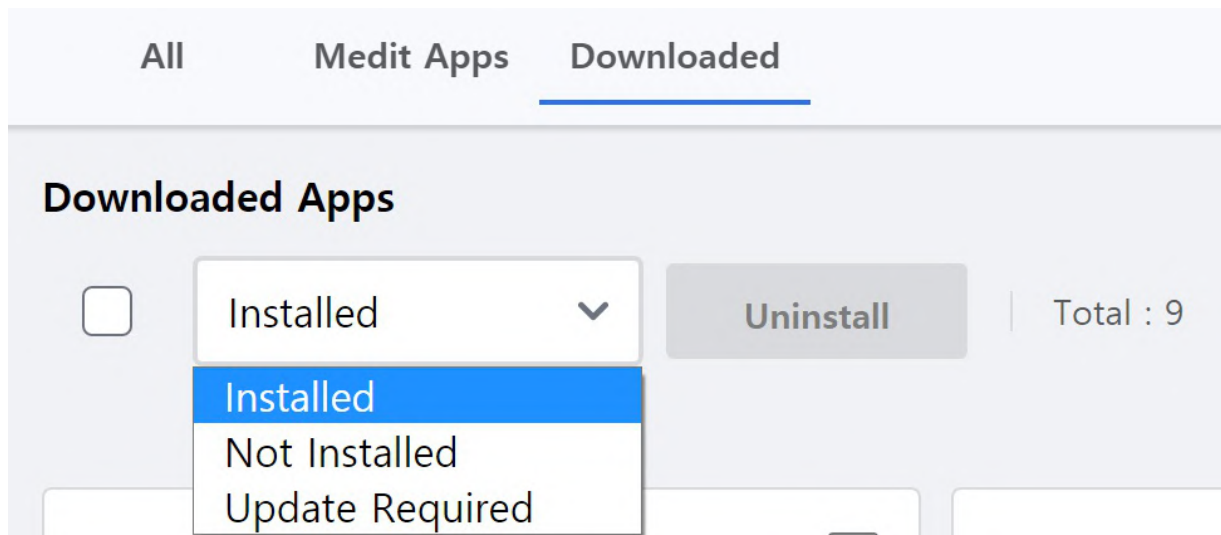

- **Установлено:** при выборе этого параметра отображаются только те приложения, которые установлены на компьютере, на котором пользователь в данный момент вошел в систему.
- **Не установлено:** выбор этого параметра позволяет просмотреть приложения, установленные на других компьютерах, и быстро их установить.
- **Требуется обновление:** при выборе этого параметра отображаются только те приложения, которые установлены на текущем компьютере и требуют обновления.

Trash Box

Trash Box временно хранит удаленные проекты. Любой проект в Trash Box может быть либо восстановлен, либо безвозвратно удален.

Предостережение

Данные, удаленные из Trash Box, будут безвозвратно удалены с вашего компьютера и сервера и не могут быть восстановлены.

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

▼ All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Диспетчер синхронизации проектов

Диспетчер синхронизации проектов поможет вам загружать и скачивать проекты более эффективно. Вы можете загрузить несколько проектов в облако или скачать их на свой локальный компьютер. Чтобы определить проекты, требующие синхронизации, просто воспользуйтесь поиском или примените фильтры по дате.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Close

Загрузить

 Upload	Загрузить выбранные проекты.
 Cancel	Отменить загрузку выбранных проектов.
 Retry	Повторить попытку, если загрузка проектов не удалась.

Скачать

 Download	Скачать выбранные проекты.
 Cancel	Отменить скачивание выбранных проектов.
 Retry	Повторить попытку, если скачивание проектов не удалось.

Связанные веб-сайты

Вы можете перейти непосредственно к меню, доступным только в веб-сервисе Medit Link, таким как My Info, Partners и Membership. Подробное описание меню веб-сервиса Medit Link вы можете найти в Medit Link > веб-сервис Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) и [My Info](#).

В интернет-магазине Medit, Medit Shop, вы можете приобрести расширенную гарантию на сканеры и другие товары Medit, такие как рюкзаки для сканеров.

Также вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Справочный центр Medit, канал Medit Academy на YouTube и образовательная онлайн-платформа Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Просмотрщик файлов

Просмотрщик файлов группирует и отображает различные данные, включая данные, полученные из программ, связанных с Medit Link, и данные, прикрепленные пользователями.



Он обеспечивает основные функции управления, такие как просмотр/скрытие данных, настройка прозрачности и удаление данных.

Поддерживается предварительный просмотр файлов в следующих форматах:

- 3D-данные: STL, OBJ, PLY
- 2D-изображения: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Видеофайлы: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево данных

В дереве данных вы можете группировать и отображать все данные проекта. Кроме того здесь вы можете просматривать/скрывать данные, настраивать прозрачность и удалять данные из дерева данных.

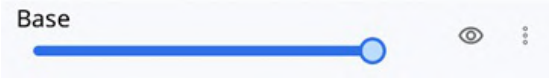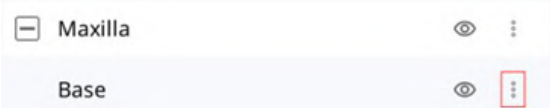
	Показать / Скрыть	Позволяет показывать или скрывать данные.
	Непрозрачность	Ползунок появляется, когда в дереве данных вы нажимаете на какие-либо данные. Перемещая ползунок, вы можете настроить прозрачность отображаемых данных. 
	Далее	Показывает доступные дополнительные функции.  • Показывать только это: скрывает все данные, кроме необходимых. • Скрыть: скрывает данные. • Дублировать: копирует данные и добавляет их в группу вложений. • Экспортировать: экспортирует выбранные файлы. • Переименовать: изменяет имя данных. • Удалить: удаляет данные.



Примечание

Вы можете переименовать данные в онлайн-режиме.

Инструменты управления моделью

Элементы управления 3D-моделью

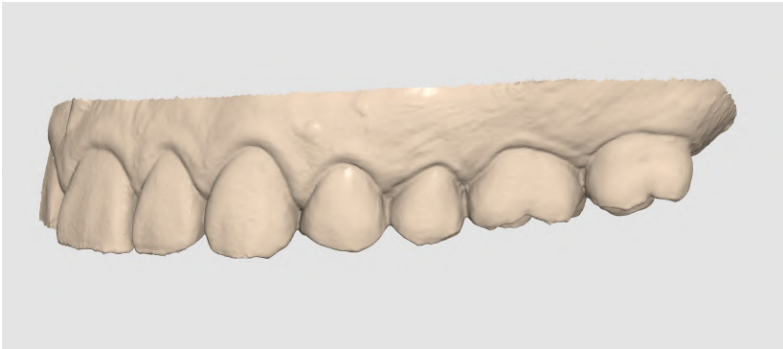+	Панорамировать	Переместить модель.
↺	Повернуть	Повернуть модель.
🔍	Увеличить/Уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
🔍	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
🌈	Режим отображения данных	Позволяет просматривать данные в цвете с глянцевой поверхностью (физически корректный рендеринг, PBR). 
🌈		Позволяет просматривать данные в цвете с матовой поверхностью (Phong-рендеринг). 
🟠		Позволяет просматривать данные в одном цвете. 

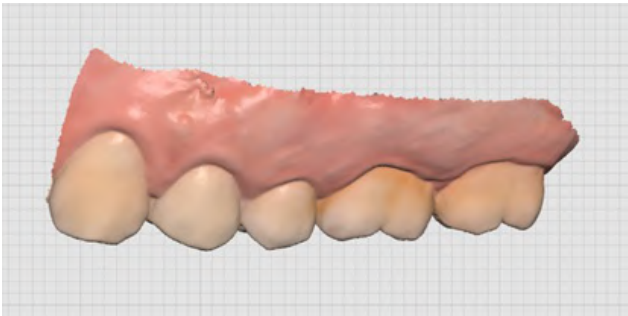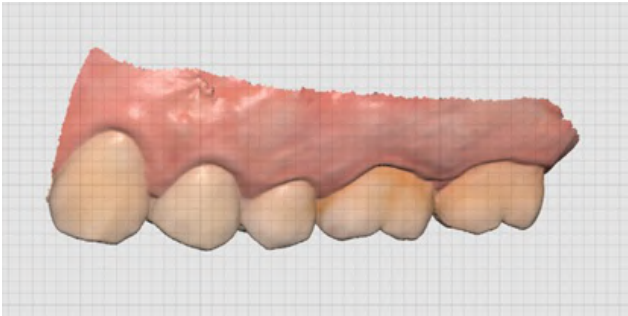	Настройки сетки (mm)	Включить сетку	Показывает сетку на заднем плане. 
		Выключить сетку	Скрывает сетку на заднем плане.
		Включить наложение	Накладывает сетку поверх модели. 

Управление 2D-изображением


 	Следующее/предыдущее изображение	Позволяет перемещаться между изображениями.
	Редактировать	Редактирует изображение.
 	Закрепить/открепить окно	Позволяет отсоединить окно с изображением и переместить его в нужное положение. Вы можете изменить размер окна. После перемещения окна в исходное положение оно возвращается к размеру по умолчанию.

Функциональные инструменты

Захват изображений и заметки


Делайте захваченные изображения экрана в виде 2D-изображений, рисуйте на них или добавляйте примечания.


Вы можете сохранять их как файл вместе с вашими примечаниями и отправлять в качестве референсных данных.

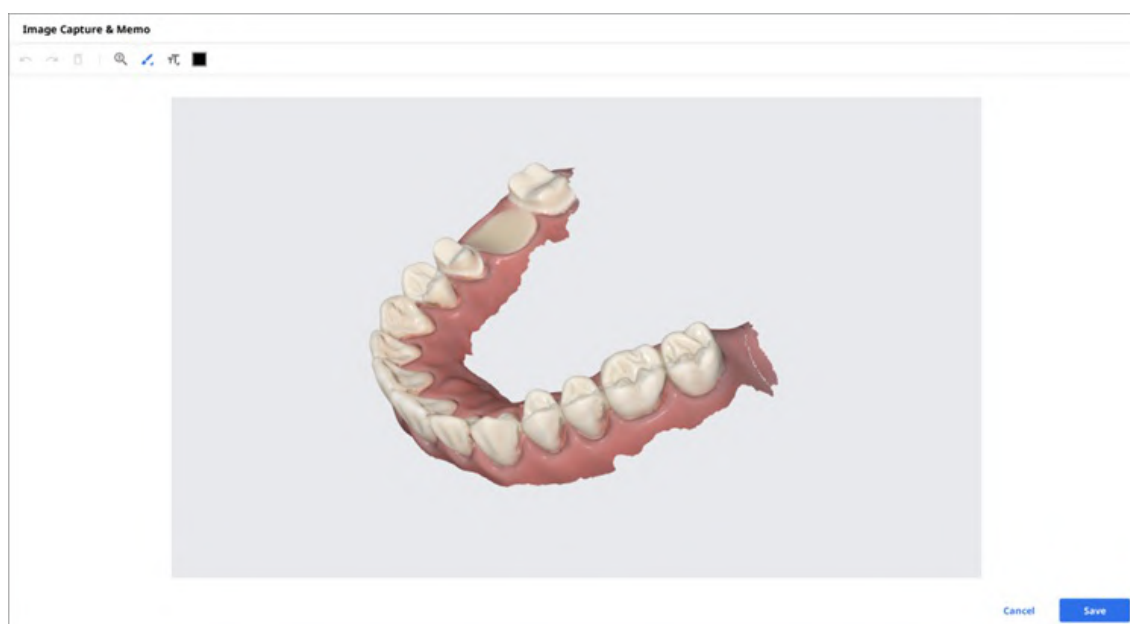

Ортодонтический захват

Делайте изображения в направлении просмотра, а также сверху/снизу/слева/справа от направления текущего просмотра.

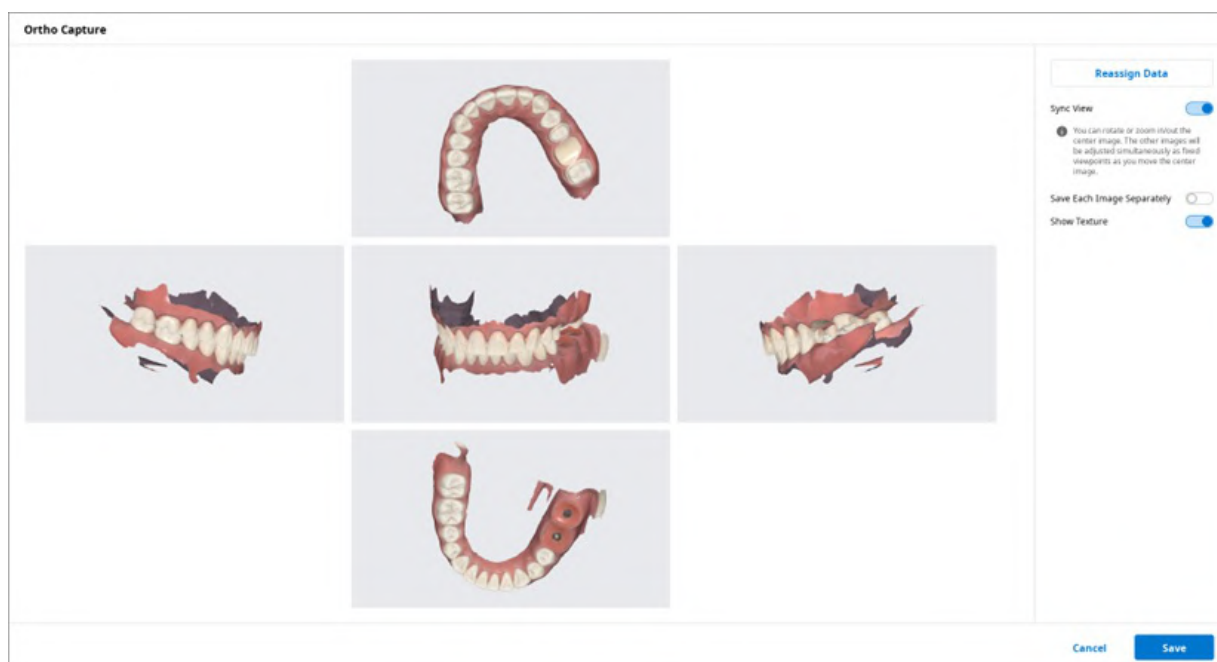

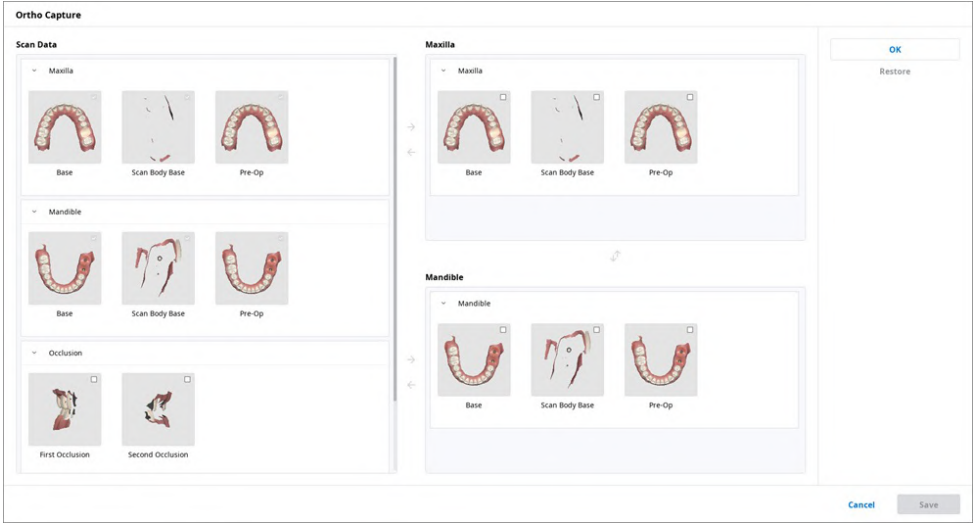Синхронизация просмотра	Если эта функция включена, вы можете поворачивать или увеличивать/уменьшать центральное изображение. При его перемещении одновременно будут меняться и остальные изображения фиксированных точек обзора. Когда эта функция выключена, вы можете панорамировать, поворачивать или увеличивать/уменьшать все изображения по отдельности.
Сохранить каждое изображение по отдельности	Сохраняет каждое изображение в высоком разрешении.
Показать текстуру	Включает/выключает текстуру модели.
Повторно назначить данные	С помощью функции «Повторно назначить данные» вы можете изменять данные верхней/нижней челюсти. Измененные данные можно использовать для создания и применения изображений результатов ортодонтического захвата.  • Данные сканирования: отображаются данные сканирования для проекта. • Верхняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для верхней челюсти. • Нижняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для нижней челюсти.


Заполнить дырки

Заполнение дырок в данных 3D-сетки.



Обрезка


Функция обрезки предоставляет различные инструменты для редактирования данных.

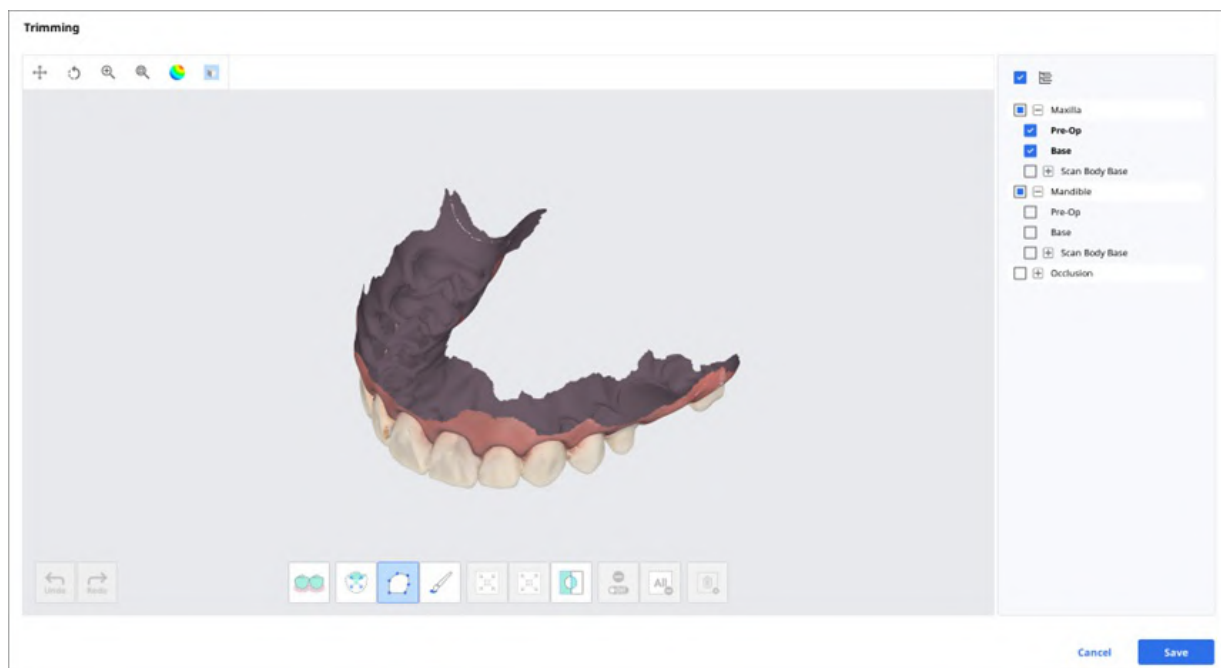

Выбранные данные 3D-сетки можно редактировать с помощью различных инструментов, расположенных в нижней части окна.

Выбор		Умный выбор области зубов	Автоматически выбирает все зубы дуги, исключая десну.  Примечание Эта функция доступна только для данных сканирования, полученных с помощью Medit Scan for Clinics с включенной опцией «Использовать GPU».
		Умный выбор области одного зуба	Автоматически выбирает область отдельного зуба одним щелчком мыши. Вы можете щелкнуть по зубу или перетащить его.
		Выбор полилинией	Выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране.
		Выбор кистью	Выбирает все объекты на начерченном от руки пути на экране. Будет выбрана только лицевая сторона. Кисть поставляется в трех разных размерах.
Настройка выбранной области		Уменьшить выбранную область	Уменьшает выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Расширить выбранную область	Расширяет выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Инвертировать выбранную область	Инвертирует выбранную область.
Отмена выбора		Выбор/отмена выбора	При включении отменяет выбор области с помощью различных инструментов.
		Очистить все выбранное	Очищает все выбранные области.
		Удалить выбранную область	Удаляет данные из выбранной области.

1. С помощью инструментов выбора области выберите область, которую хотите обрезать.

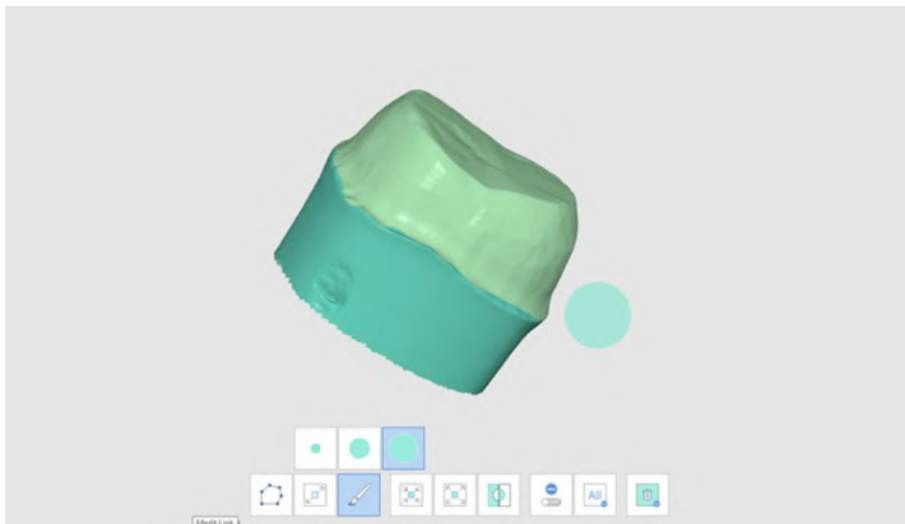


Примечание


Инструмент «Обрезка полилинией» выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране, в то время как инструмент «Обрезка кистью» выбирает данные только лицевой стороны.

2. Вы можете инвертировать, уменьшать или расширять выбранную область с помощью трех следующих инструментов:


- Инвертировать выбранную область

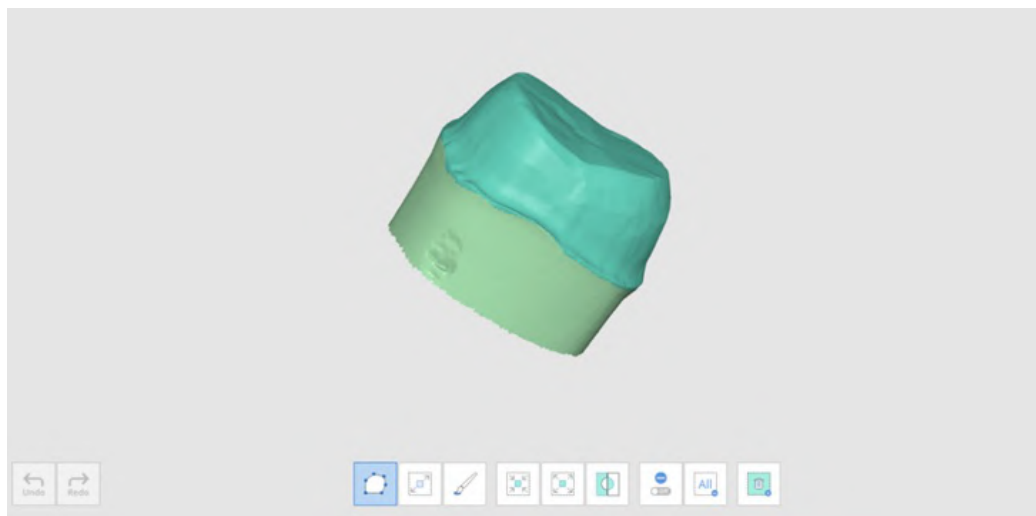

- Уменьшить выбранную область

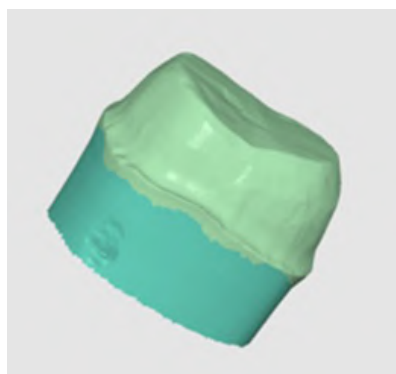


- Расширить выбранную область

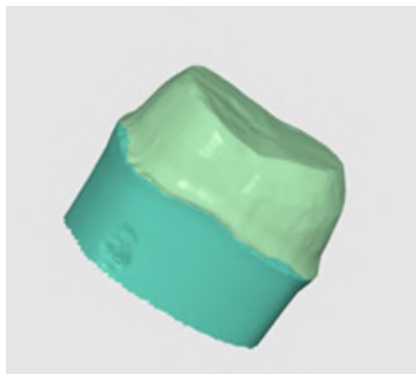






3. Отменить выделение выбранных областей можно с помощью инструмента «Удалить выбранную область».

Оптимизация сопоставления окклюзии

Оптимизируйте сопоставление окклюзии. Вы можете выбрать целевые данные и настроить сопоставление окклюзии.

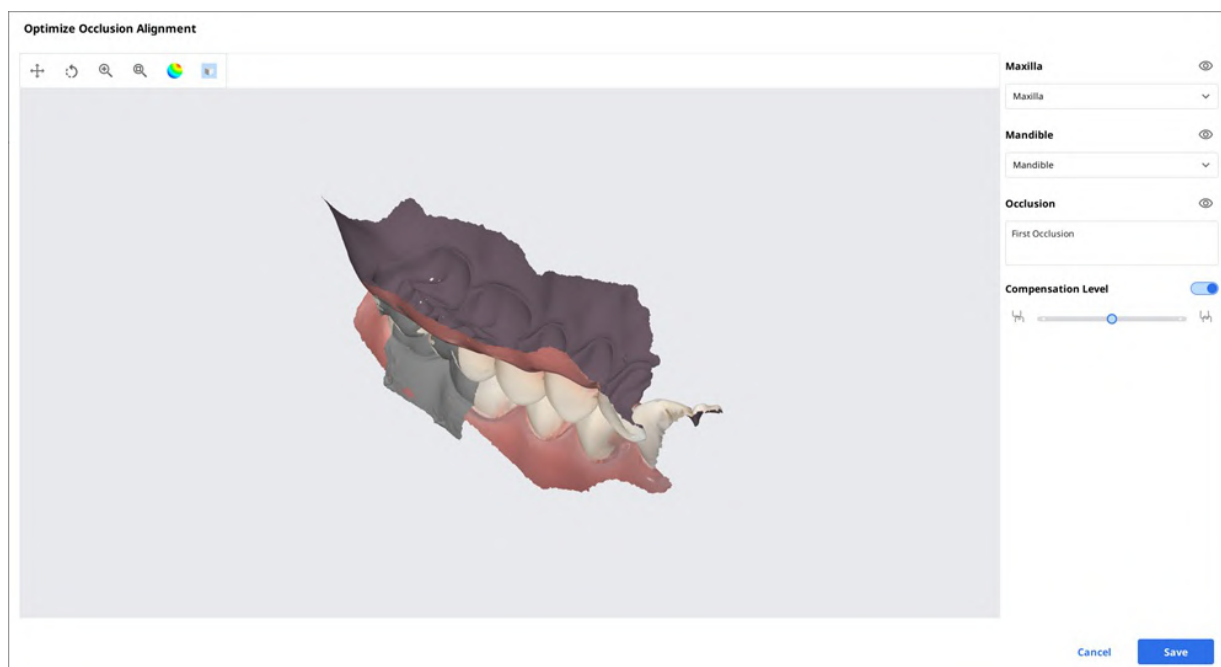


Уровень компенсации

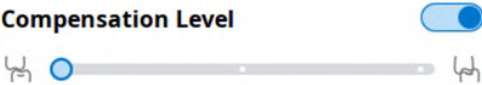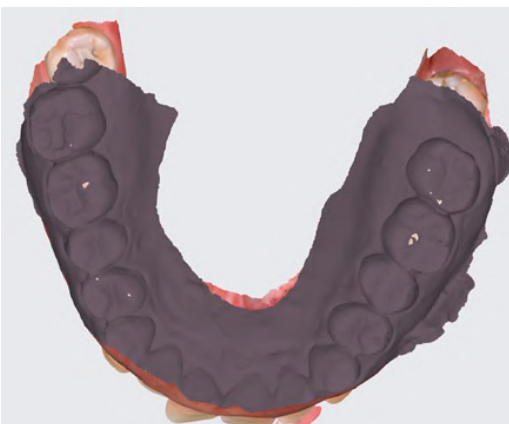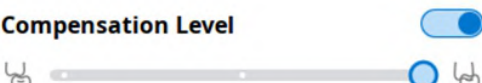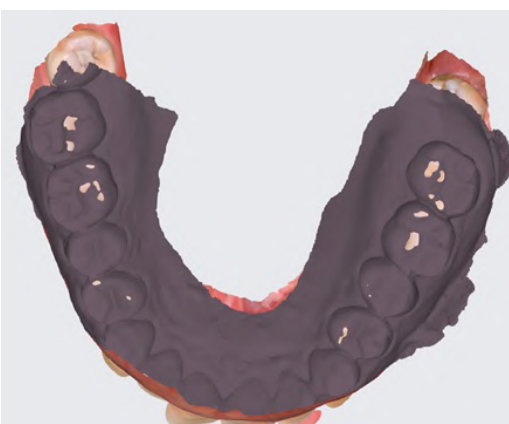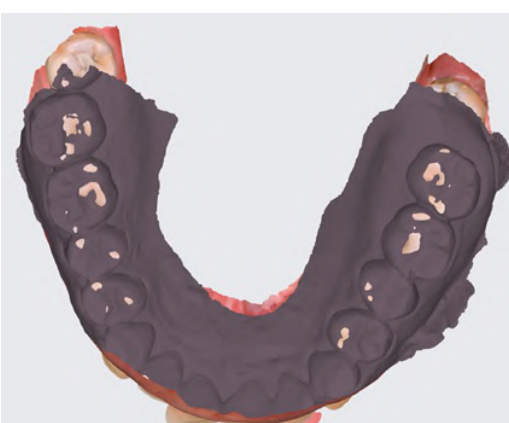Низкий	Compensation Level 	
Средний	Compensation Level 	
Высокий	Compensation Level 	
Выключен	Compensation Level 	

Движение нижней челюсти

Вы можете воспроизвести движения нижней челюсти, записанные в Medit Scan for Clinics, чтобы увидеть динамические окклюзионные контакты между верхним и нижним зубными рядами.

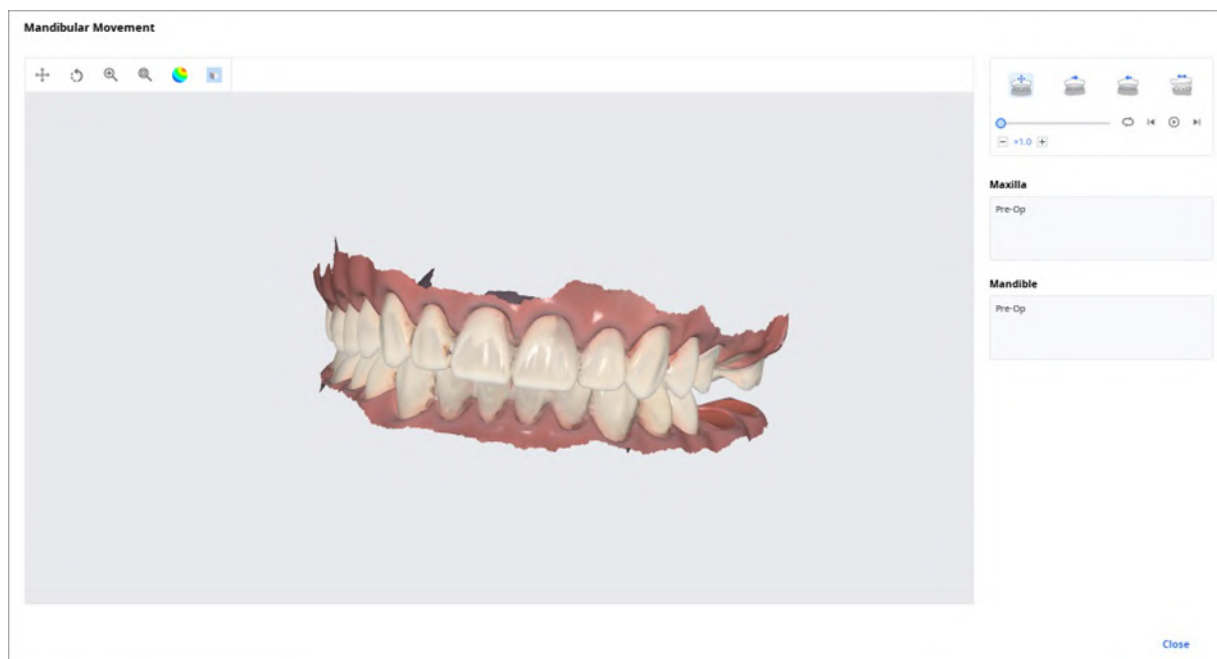

	Свободное движение	Воспроизводит запись свободного движения нижней челюсти.
	Левое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти влево.
	Правое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вправо.
	Протрузионное движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вперед.

Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов

Вы можете получить несколько результатов данных окклюзии из приложений для сканирования Medit.

Управлять этими результатами можно, используя предоставляемый Medit Link Просмотрщик файлов.

Как управлять несколькими результатами


При получении нескольких результатов окклюзии от Medit Scan for Clinics Medit Link предоставляет возможность выбора результата.

Список результатов упорядочен по имени, и вы можете выбрать один из элементов.

Выбранная модель будет показана в Дереве данных и Области отображения модели.



Свернуть список и изменить элемент можно, используя значки со стрелками.

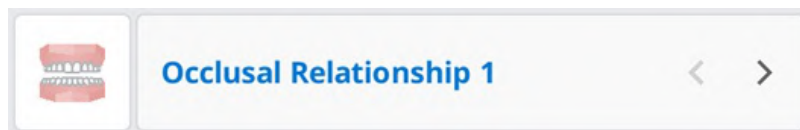

Параметры просмотра

Вы можете изменять параметры просмотра, чтобы настроить компоновку списка проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Фильтры статуса

Функция, которая позволяет показать или скрыть каждый фильтр, отражающий статус проекта. Скрытые фильтры статуса не отображаются на экране в Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

С помощью фильтров статуса вы с легкостью сможете найти нужный вам проект.

- Нажмите на статус, который вы хотите просмотреть, чтобы отобразить соответствующие ему проекты.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

Для каждого раздела доступны следующие параметры фильтрации:

Раздел	Фильтры статуса
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Элементы таблицы

Выберите элементы для отображения в списке проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Вы можете изменить порядок элементов таблицы или настроить ширину столбцов таблицы в списке для максимального удобства использования.

Для каждого раздела доступны следующие элементы таблицы:

Раздел	Элементы таблицы
Patient	Имя пациента/идентификатор пациента/пол/количество проектов/дата регистрации/дата рождения/дата последнего сканирования
Case Box	Статус/название проекта/дата рождения/информация формы/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
Order Box	Статус/название проекта/имя пациента/отсканирован/дата заказа/название лаборатории/запрашиваемая дата доставки/изменен
In Box	Статус/название проекта/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/изменен/название клиники
Work Box	Статус/название проекта/имя пациента/информация формы/изменен/запрашиваемая дата доставки/дата сканирования/название клиники/дата заказа

Тип просмотра

Меняйте тип просмотра в Case Box между форматами «Галерея» и «Список».

Для каждого раздела доступны следующие параметры типа просмотра:

Раздел	Параметры типа просмотра
Patient	Список
Case Box	Список/галерея
Order Box	В виде списка
In Box	В виде списка
Work Box	В виде списка

Группировка

Выберите вид группировки, чтобы классифицировать и упорядочить проекты в списке по выбранному параметру.

Для каждого раздела доступны следующие параметры группировки:

Раздел	Параметры группировки
Case Box	Нет/имя пациента/дата сканирования/дата заказа
Order Box	Нет/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
In Box	Нет/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
Work Box	Нет/запрашиваемая дата доставки

Примечание

Параметры группировки недоступны в разделах Patient, Case Talk и Trash Box.

Сортировка

Выберите вид сортировки, чтобы изменить порядок проектов в списке в соответствии с выбранным параметром.

Для каждого раздела доступны следующие параметры сортировки:

Раздел	Группировка	Параметры сортировки
Patient	-	Имя пациента/идентификатор пациента/дата рождения/дата регистрации/количество проектов/дата последнего сканирования
Case Box	Нет	Имя пациента/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Имя пациента	Изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/изменен/дата заказа/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/изменен/дата сканирования/название лаборатории
Order Box	Нет	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
In Box	Нет	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата заказа/название клиники
Work Box	Нет	Имя пациента /изменен/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента /изменен/название клиники


Примечание

Параметры сортировки недоступны в разделах Case Talk и Trash Box.

Фильтрация и поиск

Фильтрация по пациенту

Фильтруйте и отображайте проекты по имени пациента. Вы можете создать список, отфильтровав только тех пациентов, с которыми вам нужно работать.

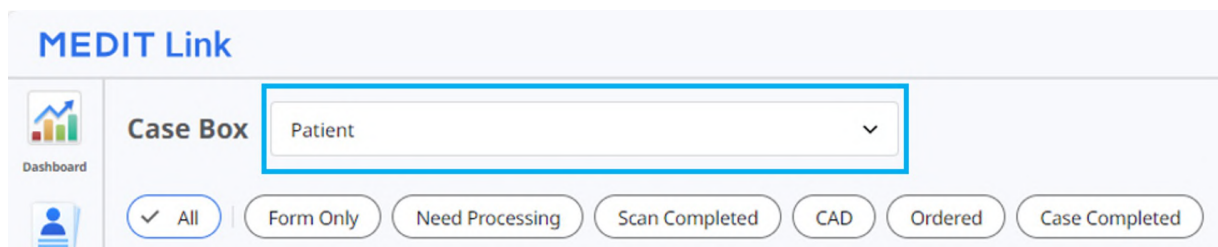


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Введите имя пациента.

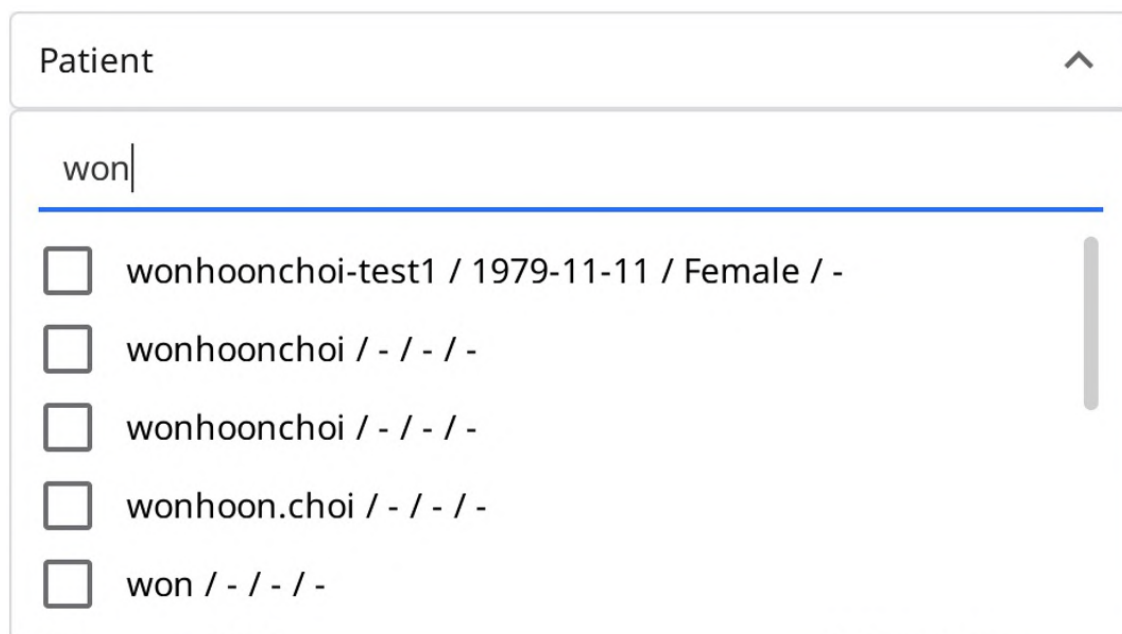

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Выберите пациентов среди представленных ниже результатов поиска.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

- В списке начинают отображаться только те проекты, которые относятся к выбранным пациентам.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Фильтрация по дате

Эта функция позволяет фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного периода времени.

- Задайте период времени.



2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Выберите нужный диапазон из списка.

- Все: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, последние изменения в которые были внесены в заданный период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение текущего месяца.
- Предыдущий месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение прошлого месяца.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Расширенные возможности поиска

Используйте возможности поиска, чтобы быстро найти нужную вам информацию.

All

▼

Search / Contains

🔍

Для каждого раздела доступны следующие критерии поиска:

Patient	Все, имя пациента, идентификатор пациента
Case Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, информация формы, название лаборатории
Order Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории, номер заказа
In Box	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа
Work Box	Все, название проекта, имя пациента, информация формы, название клиники, номер заказа
Case Talk	Название Case Talk (содержит), имя пациента (равно)
Trash Box (клиника)	Все, название проекта, имя пациента, название лаборатории, кем удалено
Trash Box (лаборатория)	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, кем удалено

Вы можете задать критерии поиска и выбрать такие логические значения как «Содержит» и «Равно».

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов

Создание проектов

Создание проекта в Case Box (клиника)


1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

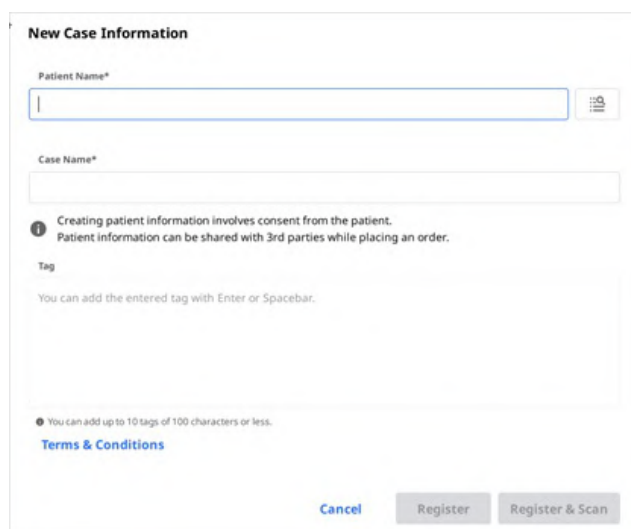

2. Введите основную информацию, такую как имя пациента и название проекта.
 - Если вы введете имя, которого нет в списке пациентов, будет добавлен новый пациент.
 - Если же вы введете имя, которое есть в списке пациентов, вы сможете выбрать его из списка.
 - При регистрации проекта для существующего пациента нажмите на значок списка пациентов, чтобы выбрать существующего пациента.



- В диалоговом окне «Список пациентов» вы можете зарегистрировать нового пациента или отредактировать информацию о существующем пациенте.

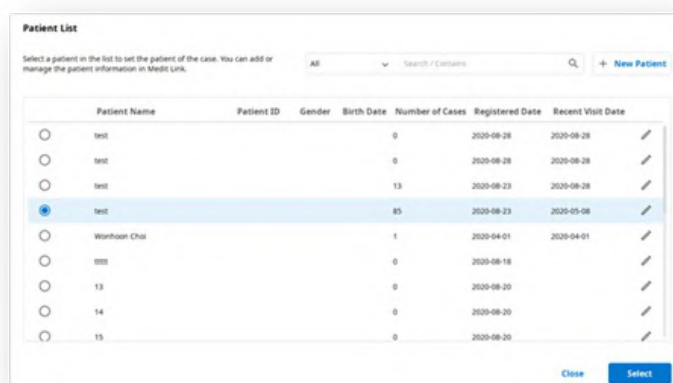

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test	85			85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

3. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Нажмите «Записать и сканировать», чтобы завершить регистрацию проекта и приступить к

сканированию.

- **Зарегистрировать:** Вы будете перенаправлены на главную страницу. Это полезно при регистрации нескольких проектов.
- **Записать и сканировать:** Перемещает на вкладку «Форма» для регистрации информации формы для проекта.

Создание проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- A note at the bottom left: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (in blue text) and "Register" (a grey button).

2. Введите или выберите название клиники.
3. Введите имя пациента и название проекта. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Введите ожидаемую дату доставки с учетом даты завершения работы.
5. После регистрации проекта вы будете перенаправлены на главную страницу.

Редактирование проектов

Редактирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Щелкните значок поиска, чтобы изменить имя пациента. Обратите внимание, что его нельзя редактировать напрямую, но вы можете найти в списке имя пациента, которым хотите заменить текущее имя, и отредактировать его информацию.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhaen Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Отметьте имя пациента, которым вы хотите заменить текущее.
- Чтобы создать нового пациента, нажмите кнопку «Новый пациент».
- Используйте кнопку «Редактировать», чтобы изменить зарегистрированную информацию о пациенте.
- Нажмите «Применить», чтобы завершить процесс.

Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)

- Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

2. Нажмите «Применить» после завершения редактирования.

Примечание

Вы не можете редактировать информацию проектов, полученных через заказ в In Box.

Клонирование проектов

Клонирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Вам будет предложено ответить на вопрос, какой тип информации вы хотите клонировать в новый проект.

3. Выберите, следует ли реплицировать только информацию формы или же полностью все данные.
4. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».

Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Продублируйте все данные, чтобы создать новый проект.
3. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».


Удаление проекта

Удаление проекта (клиника и лаборатория)

1. Нажмите на значок «Удалить».



2. Нажмите OK, чтобы удалить проект.

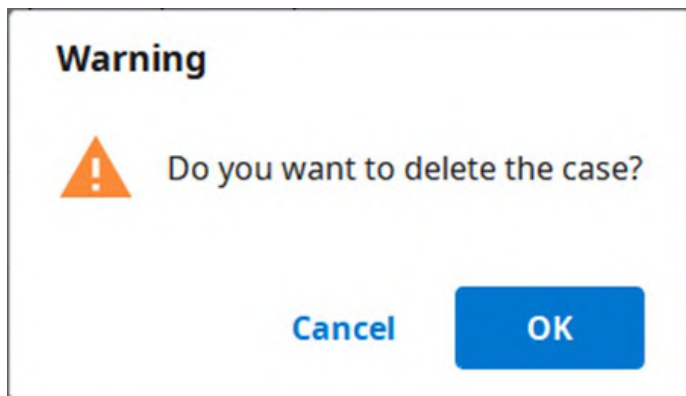

3. Удаленные проекты перемещаются в Trash Box и при необходимости могут быть восстановлены.

Информация формы

Вы можете ввести информацию формы в зависимости от подключенной программы и типа лечения.

Введенная вами информация будет использоваться в качестве базовой для работы в программах сканирования или CAD и оформления заказов.

Регистрация информации формы в Case Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите, собираетесь ли вы вводить информацию о лечении по зубам или по дуге.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке заказов.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Регистрация информации формы в Work Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите программу сканирования, которую хотите использовать.
2. Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
3. Методы могут отличаться в зависимости от выбранной программы сканирования.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зубы	O	O
Дуга	O	O
Гибкий мульти-штамп	X	O
Мульти-штамп	X	O

4. Выберите номера зубов, дуги или штампа для процесса сканирования.
5. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Соединение зубов в мост

Вы можете соединить несколько зубов в мост, если один и тот же материал применяется к нескольким соседним зубам. Нажмите на значок моста рядом с выбранными зубами, чтобы соединить или разъединить их.



Настройка параметров сканирования

В зависимости от программы, с которой вы работаете, вам доступны различные параметры сканирования.

Выбранные параметры передаются каждой программе сканирования.

Medit Scan for Labs

Общие параметры

	Соседние зубы	Отмечает препарированные и соседние зубы и передает эту информацию в программу сканирования.
	Антагонист	Автоматически отмечает антагониста и передает эту информацию в программу сканирования.
	Артикулятор	Отображает параметры выбора артикулятора в программе сканирования.
	Маркер движения	Позволяет использовать стратегию сканирования «Движение челюсти» в программе сканирования.

Опции по зубам

	Сканмаркер	Позволяет задать стратегию сканирования сканмаркера в программе сканирования.
	Предоперационное сканирование	Позволяет задать стратегию сканирования предоперационной модели в программе сканирования.
	Сканирование восковой модели	Позволяет задать стратегию сканирования восковых моделей в программе сканирования.

Добавление в Избранное

Вы можете быстро выбрать продукт, просто добавив его в Избранное.

Список избранного управляется подобно шаблону, и им можно поделиться с помощью функций экспорта и импорта.

Как добавить в Избранное

1. Выберите номер зуба.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Тип – Метод – Материал – Оттенок могут быть добавлены в Избранное, даже если выбраны не все из них.
3. Нажмите на звездочку.

4. Комбинация выбранных параметров, за исключением номера зуба, находится в вашем списке избранных поисковых запросов.

Управление избранными шаблонами

Вы можете регистрировать, управлять и обмениваться различными типами шаблонов.

Добавить	Добавляет новый шаблон.
Переименовать	Переименовывает текущий шаблон.
Удалить	Удаляет текущий шаблон.
Экспортировать	Экспортирует текущий шаблон в файл.
Импорт	Импортирует файл шаблона.

Работа по сканированию/CAD

Процесс сканирования

На основании введенной информации вы переходите к сканированию.

1. Введите или сохраните информацию о лечении и выберите необходимые параметры сканирования.
2. Нажмите кнопку «Сканировать» в правом верхнем углу окна.

Процесс CAD


Для подключения Medit Link к DentalCAD Medit Link предоставляет приложение для интеграции DentalCAD.

1. Установите приложение DentalCAD Integration в App Box.
2. Перейдите к сведениям о проекте и нажмите на значок приложения DentalCAD Integration на панели «Быстрый запуск».
3. Во всплывающем диалоговом окне укажите путь к приложению DentalCAD, установленному на вашем компьютере.
4. Введите данные отсканированного проекта и нажмите значок приложения DentalCAD Integration, после чего появится диалоговое окно для создания файла dentalProject.
5. Зарегистрируйте информацию формы для DentalCAD и нажмите «Открыть», чтобы открыть программу CAD.
6. Если вы установите приложение DentalDB Integration, результаты CAD будут автоматически доставлены по указанному пути сохранения в exocad. (Только для учетных записей лабораторий.)


Использование дополнительных приложений

Добавление на панель «Быстрый запуск»

Вы можете напрямую запускать различные дополнительные приложения, нажимая на значки установленных приложений на панели «Быстрый запуск». Перетаскивая значки приложений, можно менять их порядок.

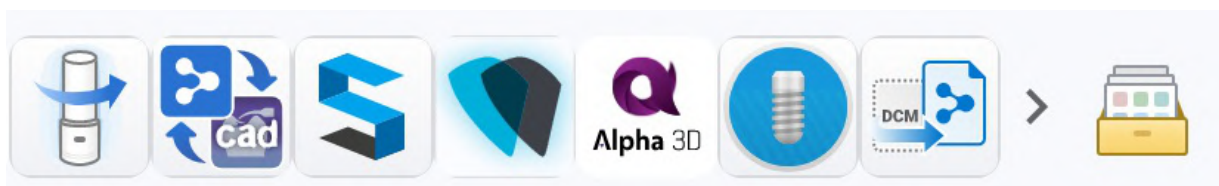

Управление запуском приложений

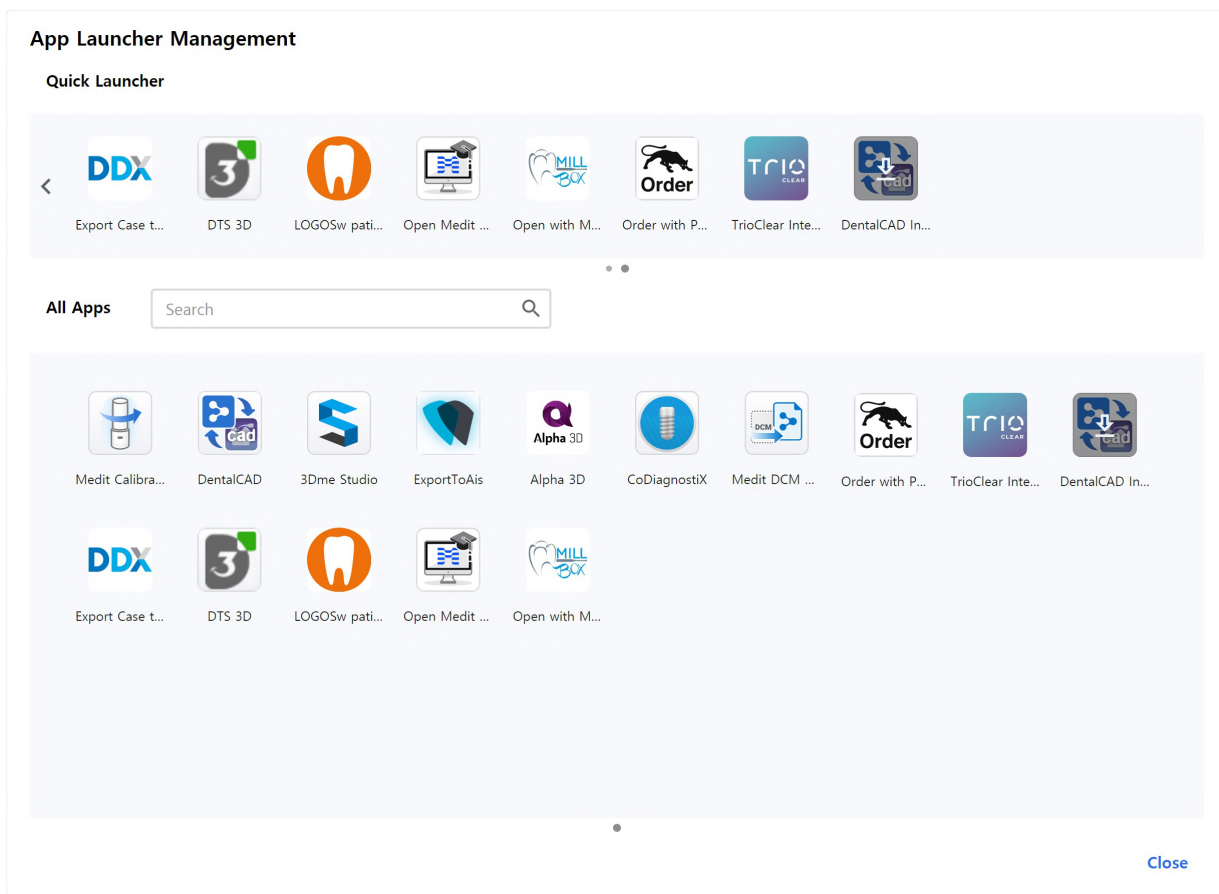

Быстрый запуск

Вы можете определить, какие приложения будут отображаться на панели «Быстрый запуск». Можно изменить порядок значков приложений, перетаскивая их, или создать папки, чтобы сгруппировать похожие приложения вместе для их упорядочивания.

Все приложения

Здесь будут отображены все установленные вами приложения. Вы можете нажать правой кнопкой мыши на значок приложения, чтобы добавить его в «Быстрый запуск». В контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, вы также можете выбрать запуск, установку или удаление приложения.

Получение файлов результатов

Экспорт файлов результатов сканирования

Помимо обмена результатами с партнерами через заказы, Medit Link позволяет сохранять файлы результатов в нужном файловом формате с помощью функции экспорта.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения файлов результатов.
Имя папки	Система создает новую папку и сохраняет в ней все файлы результатов. Имя папки по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя папки напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени папки.
Имя файла	Задайте имя файла для результата. Имя файла по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя файла напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени файла
Тип	Выберите программу проектирования, которую вы хотите использовать. Medit Link автоматически настроит файлы в соответствии с вашим выбором, что позволит вам приступить к дизайну без необходимости дополнительного выравнивания по осям.
Формат файла сетки	Укажите формат файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать файлы	Сжимает все результаты в один файл.
Объединить файлы при экспорте	Объединяет результаты сканирования верхней или нижней челюсти с данными сканирования отдельных зубов. Это полезно, когда импорт нескольких файлов в программу невозможен.
Экспорт всех окклюзионных взаимоотношений	Когда приложение для сканирования создает несколько результатов окклюзии, их можно экспортировать одновременно.
Сохранить информацию о проекте в формате PDF	Сохраняет информацию о проекте в формате PDF вместе с результатами.

Экспорт файлов результатов из списка проектов

С помощью функции «Экспортировать», расположенной над списком проектов в Case Box и Work Box, вы можете экспортировать файлы результатов одного или нескольких проектов одновременно.

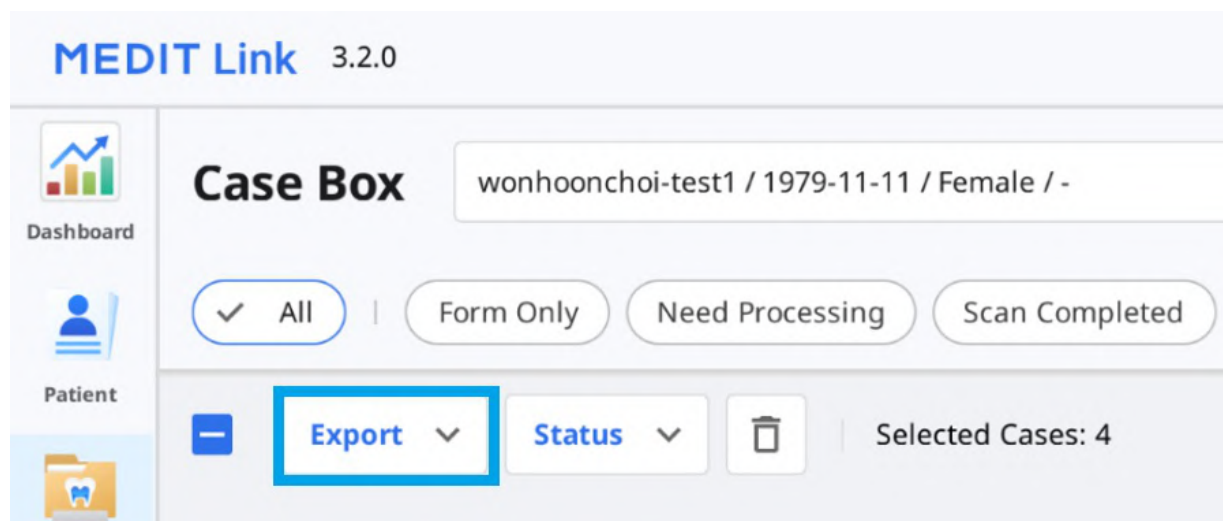

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Выберите из списка все проекты, файлы результатов которых вы хотите экспортировать.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾


☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Нажмите «Экспортировать» и в выпадающем меню выберите «Файлы результатов».

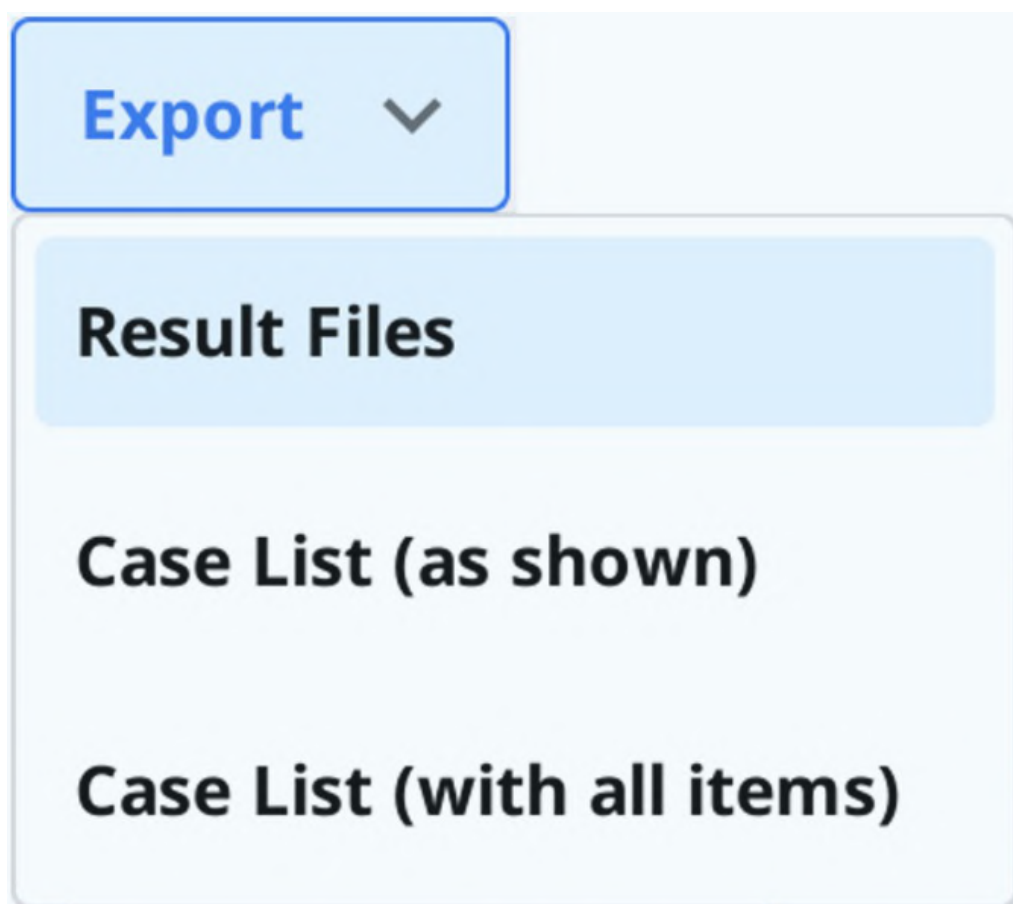

4. Задайте папку назначения, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Примечание

Поля «Имя папки» и «Имя файла» недоступны для редактирования при экспорте файлов для нескольких проектов.

Имя папки и имя файла создаются автоматически в соответствии с правилами, которые вы установили для параметров «Правило для имени папки» и «Правило для имени файла» в разделе Настройки > Параметры экспорта.

- Нажмите «Экспортировать».
- Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов

Вы можете экспортировать файлы результатов сканирования для проекта с помощью расположенного в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов» значка «Экспортировать».

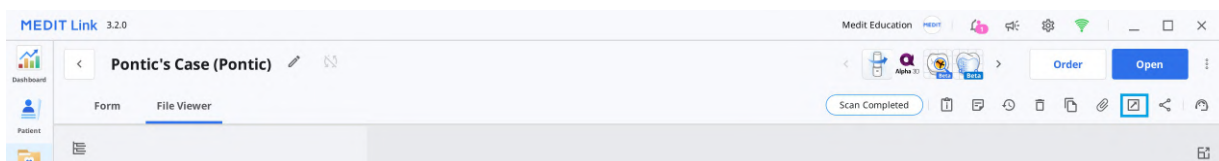

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите значок «Экспортировать» в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов».

4. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options**File List**

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

5. На вкладке «Список файлов» вы можете выбрать необходимые для проекта файлы, сняв выделение с ненужных.

Export Files in This Case

OptionsFile List

☒

☒

Maxilla

☒

Base

☒

Mandible

☒

Base

☒

Occlusion

☒

First Occlusion

☒

Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒

Maxilla

☒

Mandible

☒

Face Scan Data

☒

Face Scan Data

Close

Export

6. Нажмите «Экспортировать».

7. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

Question

?

Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

Экспорт файлов результатов из дерева данных

Вы можете экспортировать файл или файлы определенной группы данных из раскрывающегося меню в Просмотрщике файлов.


128

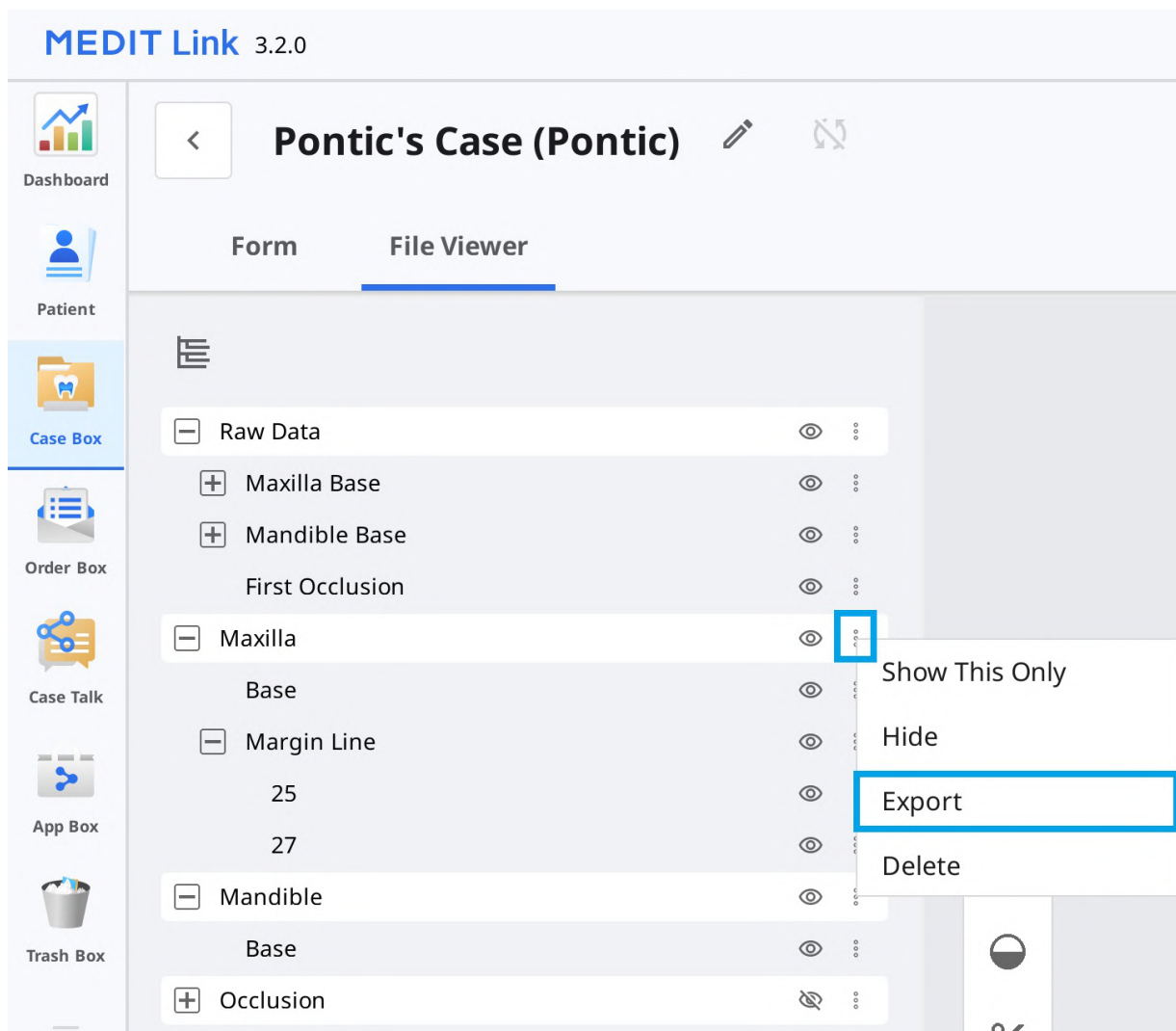

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите на значок трех точек, расположенный рядом с группой данных или объектом в дереве данных, на вкладке «Просмотрщик файлов».



4. Затем нажмите «Экспортировать».

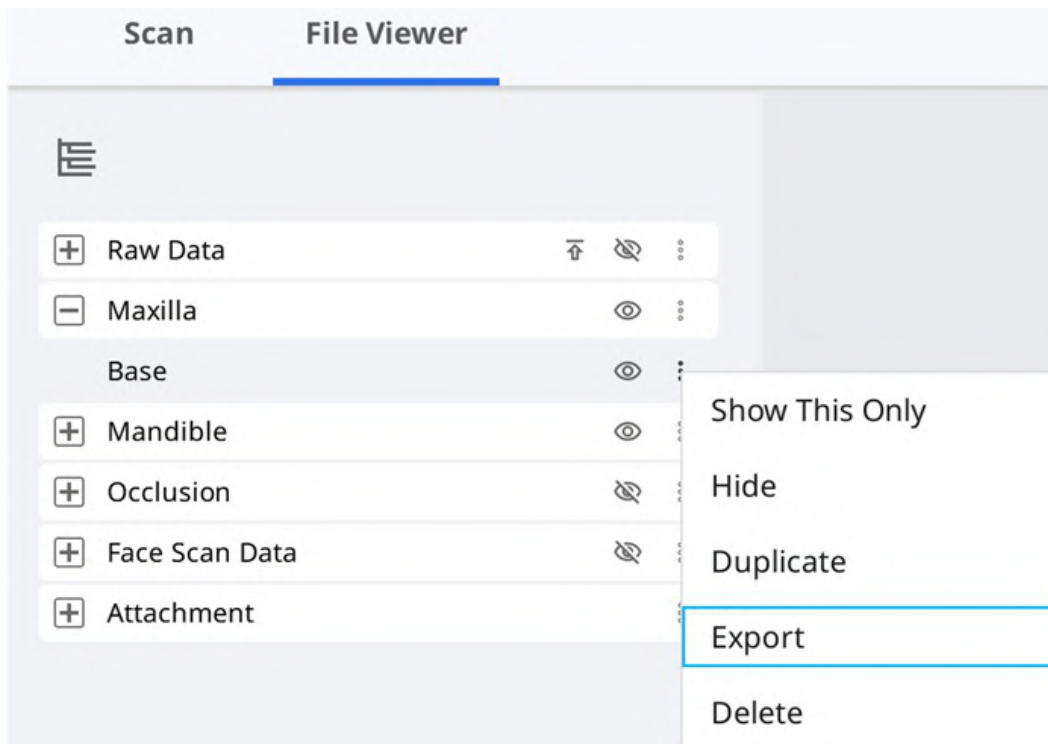

5. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Вы можете видеть, что в списке файлов отображаются только те файлы, которые вы выбрали в дереве данных.

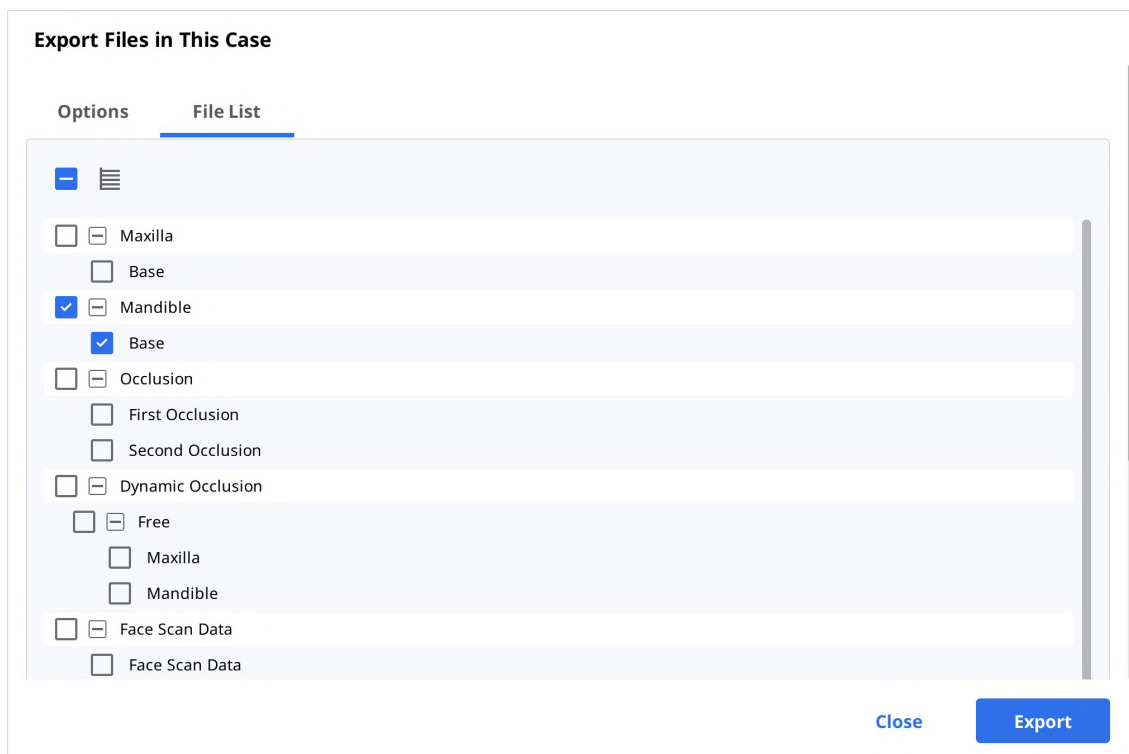

7. Нажмите «Экспортировать».
8. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

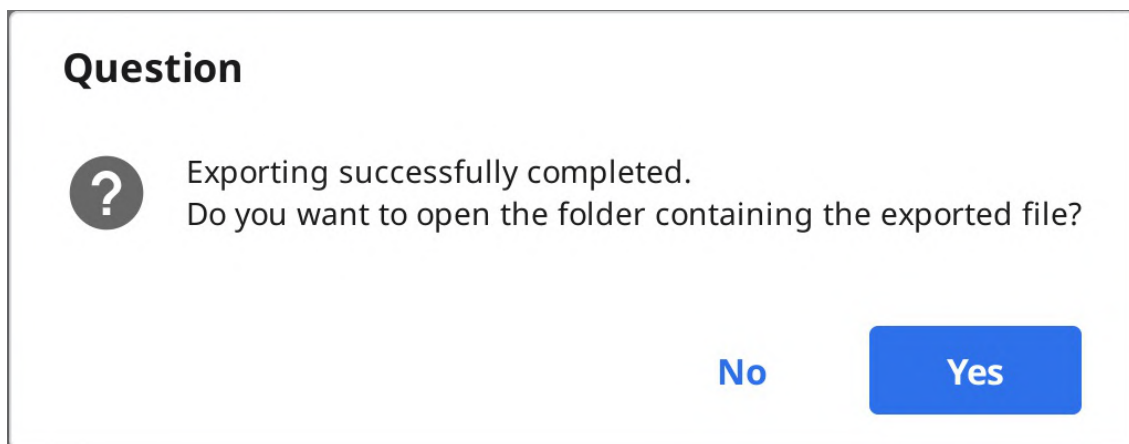

Экспорт списка проектов в формате CSV


Medit Link предоставляет функцию экспорта списка проектов в формате CSV.

Вы можете экспортировать список проектов с основной информацией и с легкостью управлять проектами.

1. Перейдите в Case Box, Order Box, In Box или Work Box.
2. Выберите проекты, которые хотите экспортировать.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

- Нажмите «Экспортировать» и выберите «Список проектов (как показано)» или «Список проектов (со всеми пунктами)».

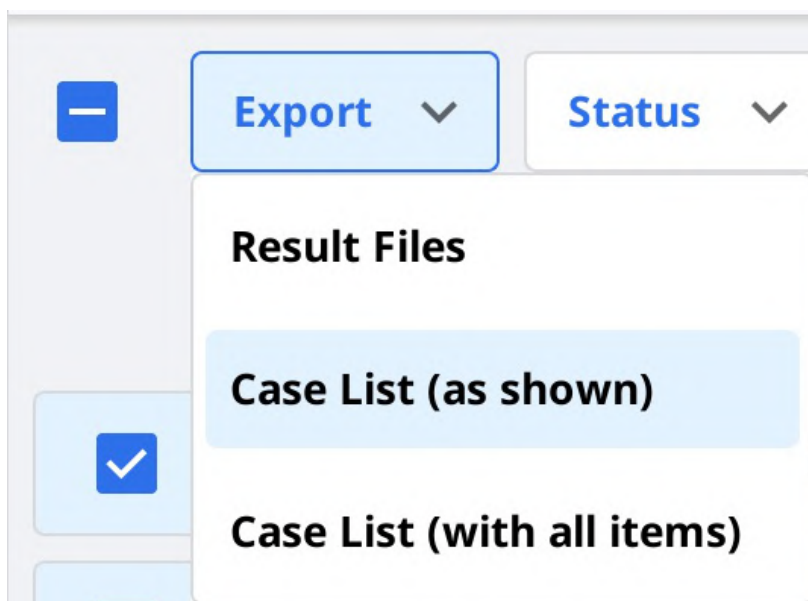

Примечание

Список проектов (как показано): экспорт списка проектов с элементами, отображаемыми в данный момент на экране. Перейдите в раздел Параметры просмотра > Элементы таблицы, чтобы отобразить или скрыть элементы по своему усмотрению.

Список проектов (со всеми пунктами): экспорт списка проектов со всеми элементами, включая статус, название проекта, дату рождения, информацию формы, дату изменения, дату сканирования, дату заказа и название лаборатории.

- Задайте путь и имя файла, затем сохраните список.
- Список проектов сохраняется в виде CSV-файла.

Экспорт линии края


В Medit Scan for Clinics реализована функция создания линии края, а с помощью Medit Link можно передать линию края в программу CAD.

Экспорт линии края в виде цвета

Как правило Medit Link преобразует линию края в цвет и экспортирует результат вместе с верхней или нижней челюстью. Вы можете создать линию края в своей программе CAD, ориентируясь на информацию о цвете.

Пример:

Верхняя челюсть

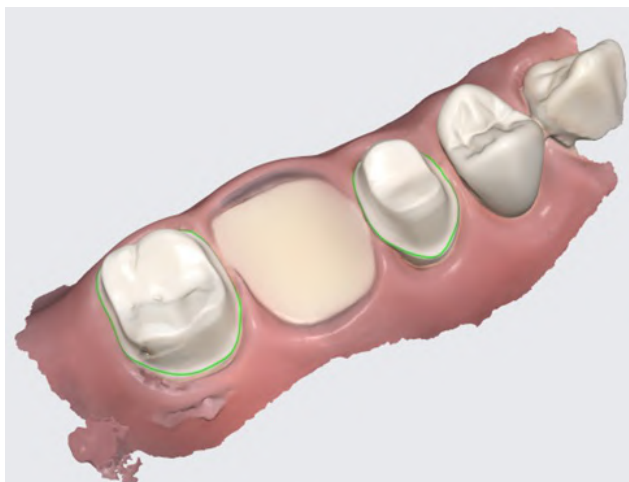

Результат с линиями края в виде информации о цвете

Примечание

Эта функция доступна для форматов, которые включают информацию о цвете, таких как meditMesh, OBJ и PLY. Линия края не преобразуется в STL.

Примечание



Тип > 3Share не поддерживает эту функцию.

Экспорт линии края в виде файла

В случае с exocad Medit Link экспортирует линию края в файл «~margin.xyz», который можно импортировать в exocad напрямую.

Этот файл можно использовать в exocad без дополнительной работы.

Пример:

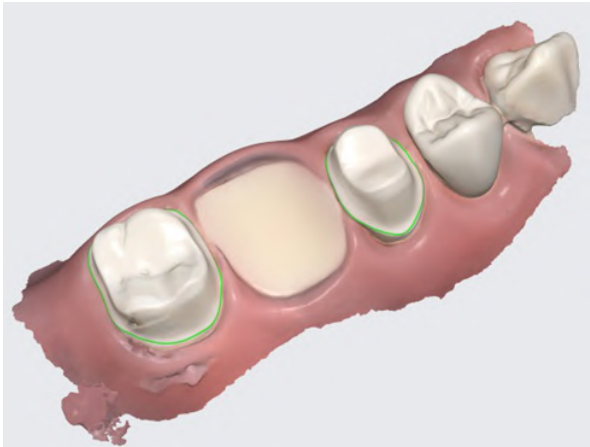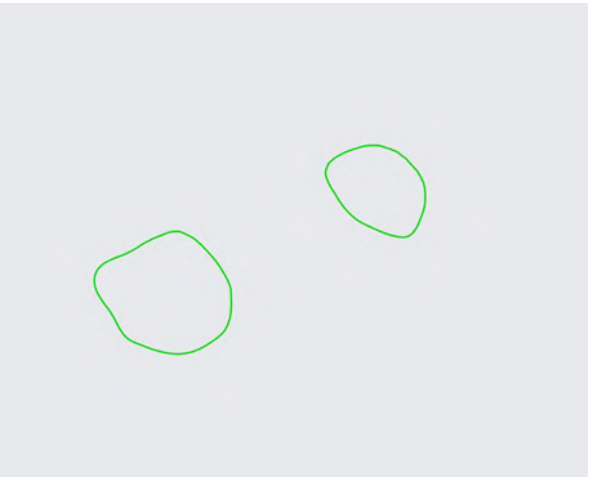Верхняя челюсть	Линия края
 Результат с линиями края в виде информации о цвете	 Линии края экспортируются в виде отдельных файлов

Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link

Medit Link поддерживает функцию скачивания файлов.

Если вы хотите получить файлы результатов без установки приложения Medit Link, вы можете скачать файлы из веб-сервиса Medit Link.

Примечание


Чтобы скачать файлы из интернета, данные должны быть загружены в облачное хранилище Medit.

Функция скачивания доступна для следующих разделов веб-сервиса Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Вы можете найти кнопку «Скачать» в правом верхнем углу.

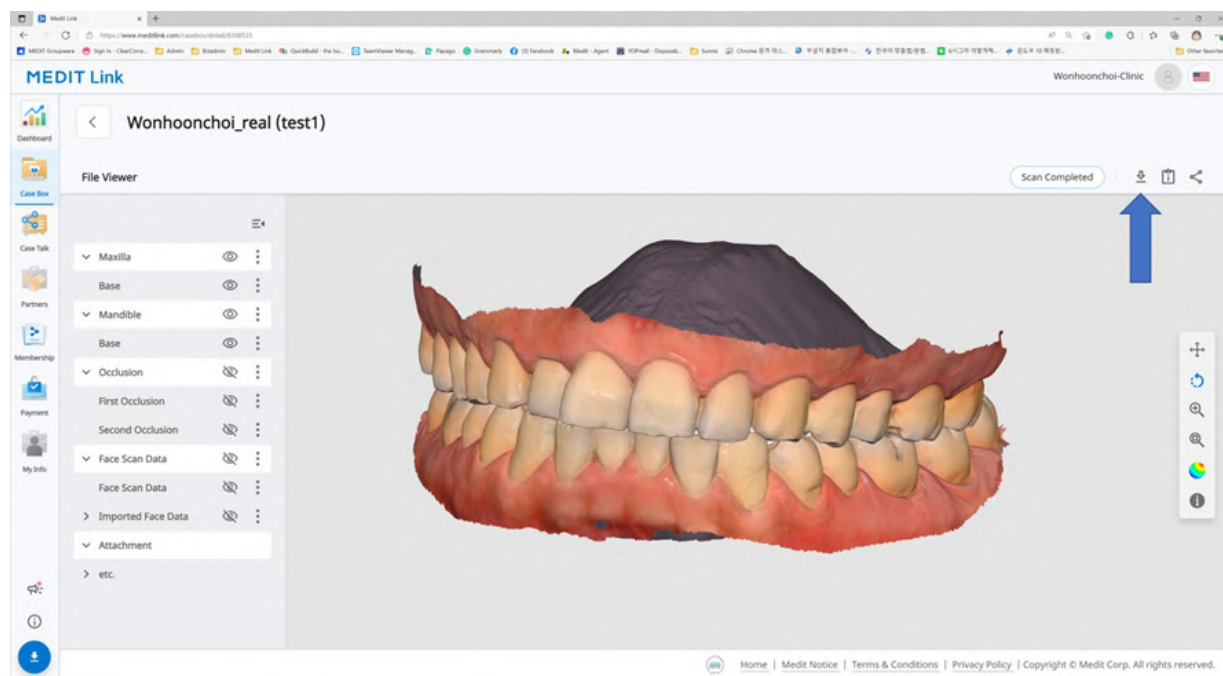

Web Viewer

Когда вы делитесь проектом с помощью Case Talk, вы можете указать, разрешать скачивание или нет.

Если вы установите флажок «Предоставить разрешение на скачивание» и предоставите общий доступ к проекту, все пользователи, которые подключатся к общей ссылке, смогут скачать файлы.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

В Web Viewer вы можете найти значок «Скачать» в правом верхнем углу.

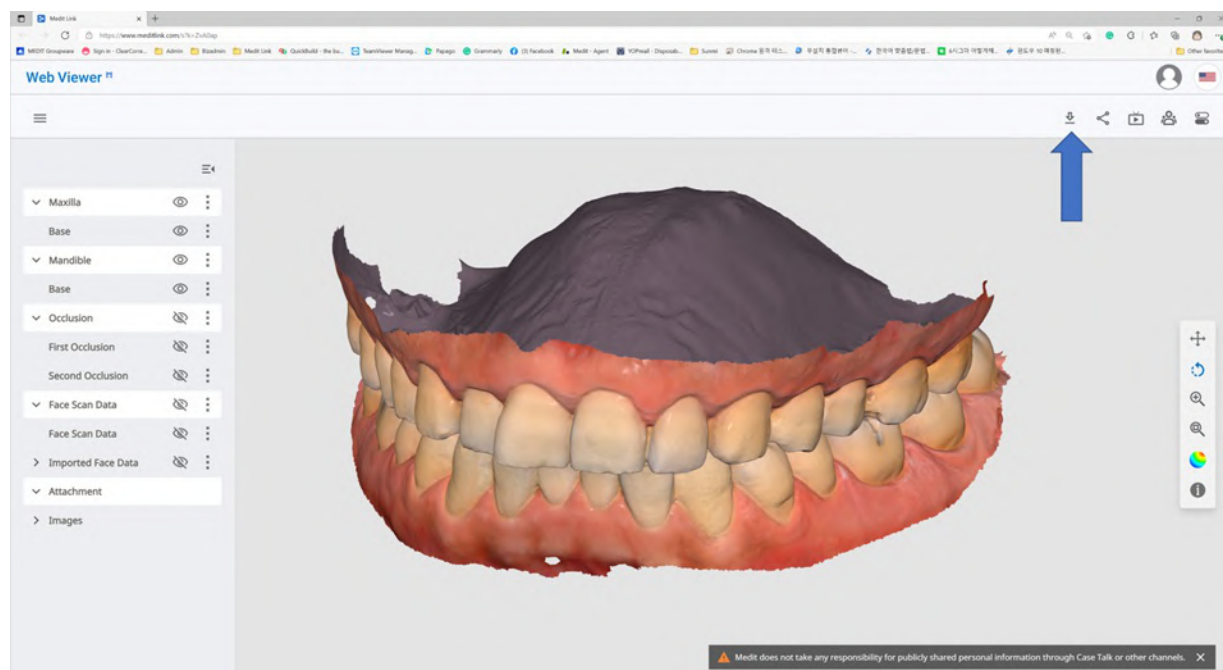

1. Нажмите «Скачать».



2. Выберите формат файла сетки в открывшемся диалоговом окне скачивания.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Затем нажмите ОК.

Заказ/управление проектами

Вы с легкостью можете заказать проект с данными, полученными из подключенных программ и прикрепленными пользователем.

Заказ проектов

Вы можете оформить заказ для своих партнеров в Case Box.

1. Нажмите кнопку «Заказ».
2. Проверьте информацию, необходимую для вашего заказа.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK


3. Выберите партнера.
4. Проверьте информацию о продукте на вкладке «Список заказов».
 - Решите, следует ли делиться именем пациента.
5. Проверьте файлы для заказа на вкладке «Список файлов».
6. Введите желаемую дату доставки.
 - Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
7. Добавьте заметки или теги для вашего партнера для уточнения каких-либо деталей.
8. Когда программа сканирования сформирует результаты множественной окклюзии, вы сможете

отправить все результаты окклюзии одновременно, установив флажок «Заказать все окклюзионные взаимоотношения».

9. Продолжите оформление заказа.


Подтверждение заказа (In Box)

- Примите заказ после его получения.
- Принятые заказы будут перенаправлены в Work Box.

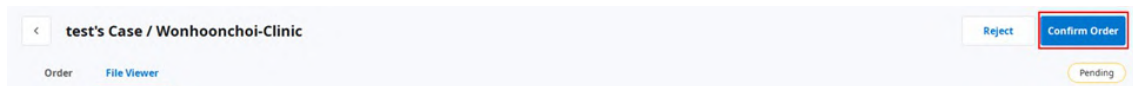


Отменить заказ (Order Box)

- Вы можете отменить заказ до того, как его примет ваш партнер.
- Отмененные проекты можно заказать повторно.

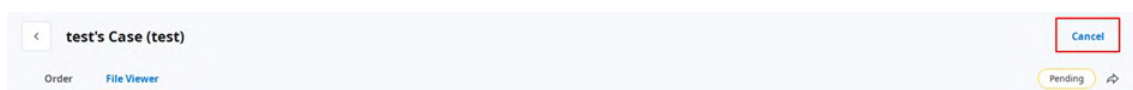


Отклонить заказ (In Box)

- Вы можете отклонить полученный заказ.
- Отклоненные проекты можно заказать повторно.

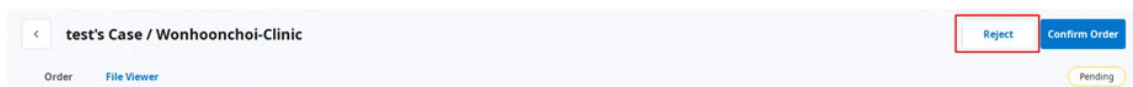

Проверка заказанных проектов

Детали заказанного вами проекта можно просмотреть в Order Box в учетной записи клиники. Вы также можете просмотреть проект, полученный через In Box, в учетной записи лаборатории.

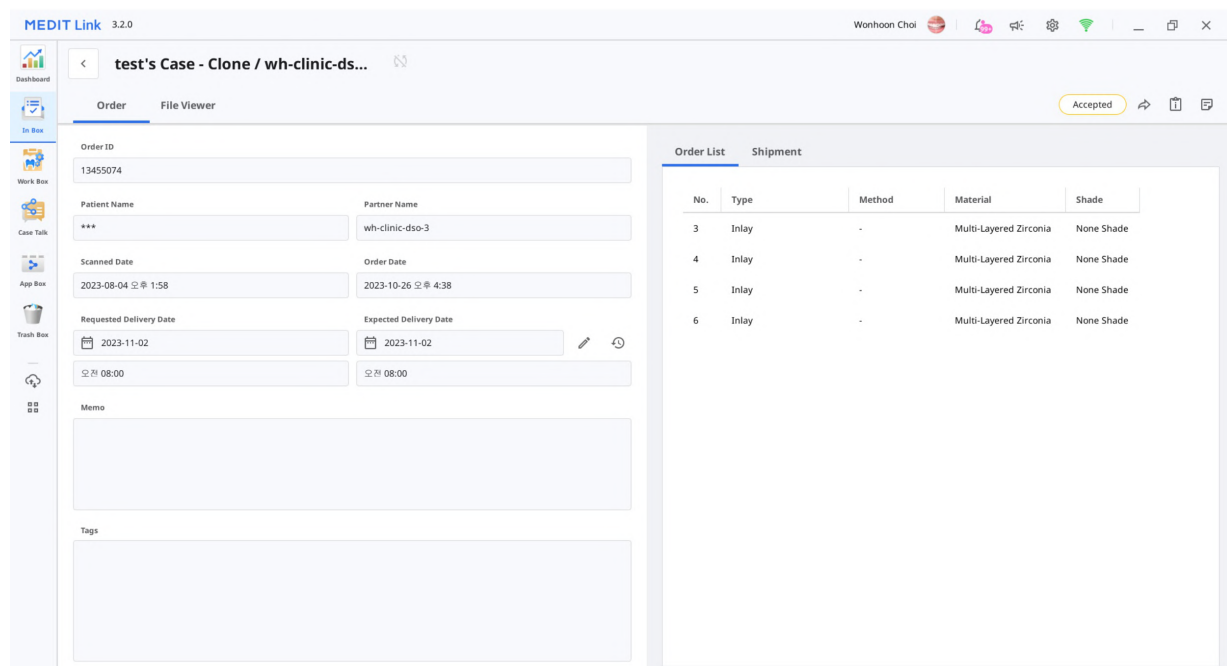

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Информация о заказе	Информация, которую можно включить в заказ: номер заказа/имя пациента/имя учетной записи/дата сканирования/дата заказа/дата доставки/срок доставки/ заметки. Вы можете проверить детали заказанного продукта и подтвердить информацию о доставке.
Список заказов	Список заказов отображает подробную информацию о заказанном продукте.
Доставка	Введите/проверьте информацию о доставке.

Ввод информации о доставке (In Box)

Введите информацию о доставке для завершенного проекта и начните отгрузку.

1. Нажмите на вкладку «Доставка».
2. Введите информацию о доставке и нажмите «Зарегистрировать».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Введенная информация отправляется вашему партнеру.

Управление датой доставки

При размещении заказа вы можете указать ожидаемую дату доставки, и эта информация будет перенаправлена вашему партнеру.

Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)

- При заказе через Case Box вы можете ввести запрашиваемую дату доставки.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
- Введите дату/время, когда вы хотите получить продукты, и продолжите оформление заказа.
- Вы можете легко установить время с помощью ползунка.

Установка ожидаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)

- Вы можете ввести ожидаемую дату доставки для заказанного проекта в In Box.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment


No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Сверьте с партнером запрашиваемую дату доставки и внесите корректировки в расписание, используя кнопку «Редактировать».



2. Введите ожидаемую дату доставки с учетом фактического рабочего дня. При необходимости оставьте комментарий.
3. Нажмите «Применить».

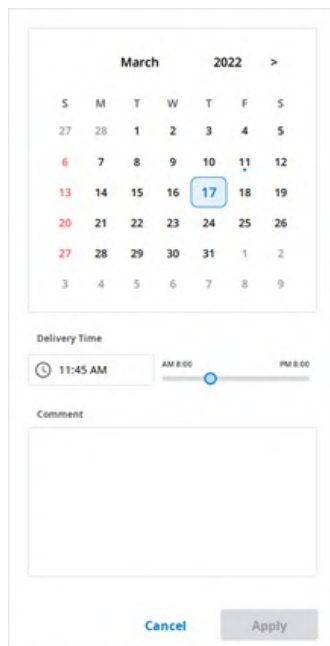

4. Ожидаемая дата доставки и заметки будут отправлены вместе с заказом.
 - Дату и заметки можно просмотреть в Order Box.
 - Вы можете изменить ожидаемую дату доставки, и эти изменения будут отправлены вашему партнеру.
5. Вы можете просмотреть историю проекта, используя кнопку «История».



Завершение проекта

Завершение проекта (Work Box, In Box)


После выполнения всех задач нажмите «Готово», чтобы завершить проект.

Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте

Вы можете найти значок с тремя точками справа от кнопок «Открыть» или «Отсканировать заново».




Завершите работу, нажав на значок и выбрав в выпадающем списке Done.

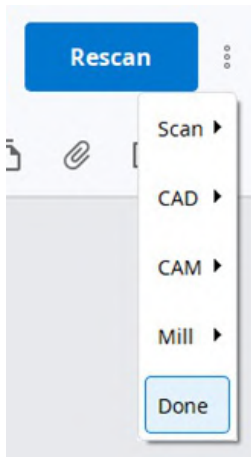

Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов

1. Перейдите в Work Box.
2. Выберите все проекты, которые необходимо завершить.

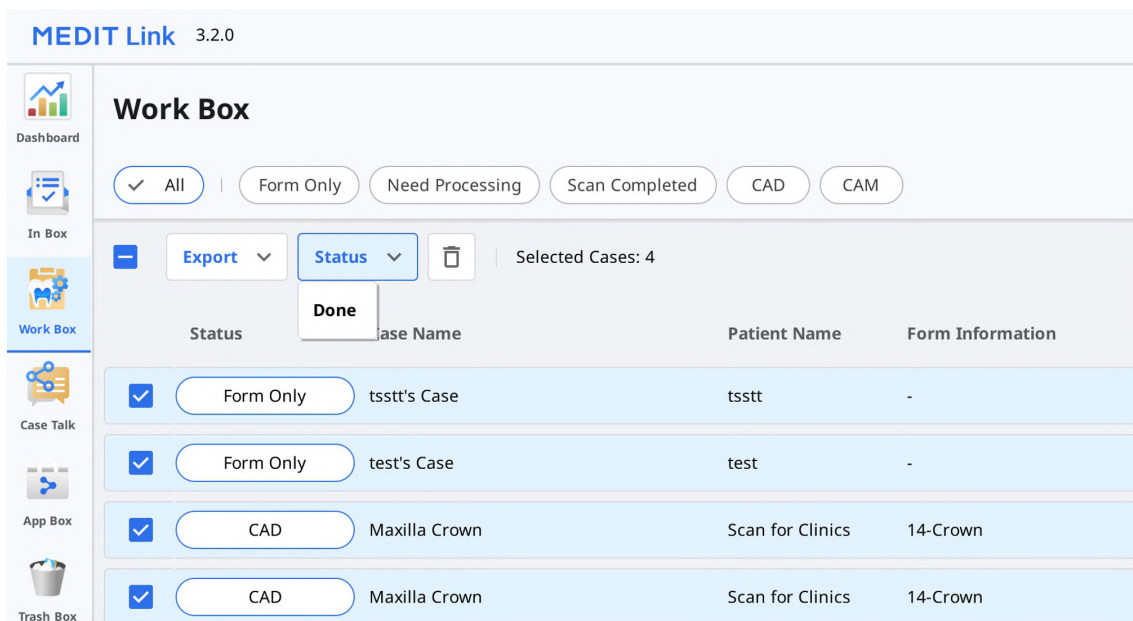


3. Нажмите «Статус» и выберите «Готово».

Завершение проекта (Case Box/Order Box)

После того, как проект будет завершен в лаборатории, клинике необходимо подтвердить проект, чтобы завершить весь процесс заказа.

Если лаборатория завершила свою работу, клиника сможет найти кнопку «Подтвердить доставку» в Order Box.

Нажав на нее, вы завершите весь процесс заказа, и статус проекта будет изменен на Case Completed.

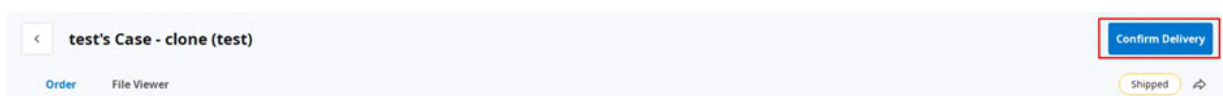

Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box

Проекты, которые не были заказаны в лаборатории, можно завершить в Case Box.

1. Перейдите в Case Box.

2. Выберите проект, который хотите завершить.

The screenshot shows the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box (highlighted), Order Box, Case Talk, and App Box. The main area has a header 'Case Box' with a 'Patient' dropdown. Below the header are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A toolbar contains an expand/collapse icon, an 'Export' button, a 'Status' dropdown (open), and a trash icon. The 'Status' dropdown menu shows 'Case Completed' as the selected option. Below the toolbar, a table lists cases. The first row is unselected and has a status of 'Ordered'. The next four rows are selected (indicated by blue checkmarks) and have a status of 'Scan Completed'.

	Status	Case Name
☐	Ordered	test
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1
☒	Scan Completed	test test(1234)
☒	Scan Completed	test
☒	Scan Completed	test

3. Нажмите «Статус» и выберите Case Completed.

Общение с помощью тегов

Вы можете добавить дополнительную информацию для своего проекта с помощью тегов и отправить их своим партнерам.

Добавление тегов при создании нового проекта

Вы можете вводить теги при создании нового проекта или редактировании информации о проекте.

New Case Information

Patient Name*

...

Case Name*

!

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

!

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Вы можете легко искать и выбирать теги, которые вы использовали раньше.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Добавление тегов при оформлении заказа

Проверяйте и редактируйте теги в диалоговом окне «Заказ» во время оформления заказа.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Просмотр тегов в сведениях о проекте

