

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

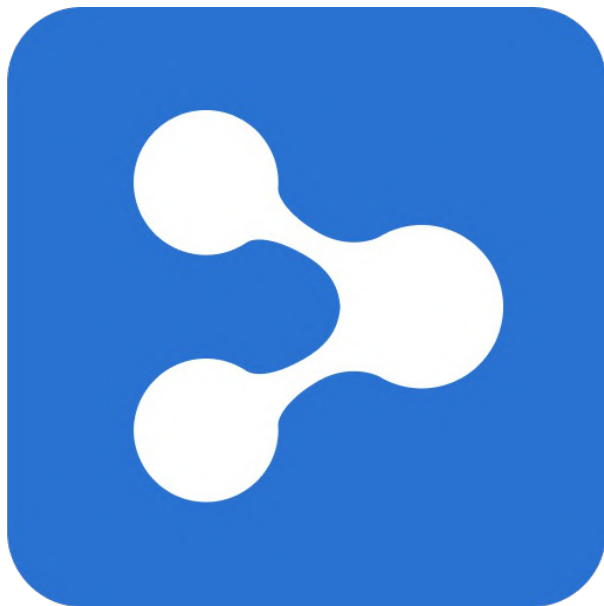


Table of Contents

Medit Link

简介	7
Medit Link	7
服务概览	7
云服务	8
带有订购系统的作业流程管理平台	8

Medit Link > 安装

系统要求	9
Windows的系统配置要求	9
macOS的系统配置要求	9
网页端服务的系统要求	9
推荐浏览器	9
移动设备的最低系统要求	9
在Windows上安装	10
在macOS上安装	13

Medit Link > 开始操作

注册&登录	17
Medit Link网站	17
注册	17
登录与欢迎页面	20

Medit Link > Medit Link Web

控制面板	23
“控制面板”概览	23
Medit Insights	23
订阅Medit Insights	24
退订Medit Insights	25
患者	26
搜索患者	26
病例库/技工病例库	27
病例筛选	27
按患者筛选	27
按状态筛选	30
按时间段筛选	30
通过搜索筛选	31
病例详情	31
订单管理/收件箱	33
订单详情	33
订单管理/收件箱中的标签	33
病例分享	34
创建“病例分享”	34
设置共享权限类型与共享选项	35
“病例分享”详情	37
网络浏览器	38
注释	39
留言	40

实时屏幕共享	41
数据树	41
“数据树”控制	41
3D模型控制	42
合作伙伴	44
搜索合作伙伴	44
我的合作伙伴名单	44
合作伙伴邀请	45
会员	46
会员	46
Medit Cloud Storage Plan	46
云存储	48
订购	48
取消订购	50
我的订购	51
细节	52
重新订购	52
如何添加付款方式	53
如何修改付款方式	54
兑换	54
细节	55
注册兑换码	55
激活兑换码	56
付款详情	56
查看账单详情	57
我的信息	59
我的账号	59
我的诊所/我的实验室(仅管理员账户)	59
我的扫描仪	60
其他菜单	62
公告&更新	62
相关网站	62
下载Medit Link App	63

Medit Link > Medit Link App

概览	64
下表概述了每种类型的诊所及实验室账户类型可使用的菜单。	64
标题栏	65
我的信息	65
通知	65
通知及更新	66
设置	66
网络状态	67
设置	69
通用	69
存储管理	70
设置时期	70
本地存储	71
云存储	71
设置连接程序	71
导出选项	72
病例转换工具	73

导出病例	74
导入病例	75
代理选项	77
产品信息	77
《用户指南》	78
菜单	79
控制面板	79
患者	79
添加新患者	80
删除患者	80
合并患者	81
病例库/技工病例库	81
病例库/技工病例库中的标签	82
病例库/技工病例库中的功能	82
订单管理/收件箱	83
订单管理/收件箱中的标签	84
病例分享	84
应用商店	85
全部	85
Medit Apps	85
已下载	86
垃圾箱	86
病例同步管理器	86
上传	87
下载	87
相关网站	87
文件浏览器	89
数据树	89
模型控制工具	89
3D模型控制	89
2D图片控制	91
“功能”工具	91
截图与备忘录	91
正畸截图	92
填补缺口	93
修剪	94
优化咬合对齐	97
下颌运动	98
在“文件浏览器”中管理多咬合数据	99
如何管理多个结果	99
视图选项	101
状态筛选	101
视图类型	102
分组选项	102
排序选项	102
筛选及搜索	104
按患者筛选	104
按日期搜筛选	105
高级搜索能力	106
Medit Link > 作业流程	
创建/编辑/复制/删除病例	107

创建病例	107
在“病例库”(诊所)中创建病例	107
在“技工病例库”(实验室)中创建病例	107
编辑病例	108
在“病例库”(诊所)中编辑病例	108
在“技工病例库”(实验室)中编辑病例	109
复制病例	109
在“病例库”(诊所)中复制病例	110
在“技工病例库”(实验室)中复制病例	110
删除病例	110
删除病例(诊所及实验室)	110
表格信息	111
在“病例库”中注册表格信息	111
在表格标签中输入	111
在“技工病例库”中注册表格信息	111
在表格标签中输入	111
将牙齿连接至牙桥	111
设置扫描选项	112
Medit Scan for Labs	112
通用选项	112
按牙齿选择	112
添加至收藏夹	113
添加至收藏夹	113
管理收藏夹模板	113
操作扫描/CAD	114
扫描流程	114
CAD流程	114
利用附加App	114
附加“快速启动器”	114
App启动器管理	114
快速启动器	115
所有App	115
获取结果文件	116
导出扫描结果文件	116
从“病例列表”中导出结果文件	117
从“文件浏览器”中导出结果文件	119
从“数据树”中导出结果文件	121
将病例列表导出为CSV格式	124
导出边缘线	125
将边缘线导出为颜色	125
将边缘线导出为文件	126
从Medit Link网页端下载文件	126
病例库/技工病例库	126
网络浏览器	127
订购/管理病例	129
订购病例	129
确认订单(收件箱)	130
取消订单(订单管理)	130
拒绝订单(收件箱)	130
查看已订购的病例	130
输入配送信息(收件箱)	131
管理交货日期	131

设置“要求交货日期”(诊所账号)	131
设置“预计交货日期”(实验室账户)	132
完成病例	133
完成(技工病例库/收件箱)	133
从“病例详情”页面“完成”病例操作	133
从“病例列表”中完成对多个病例的操作	134
完成(病例库/订单管理)	134
在“病例库”中结束对未订购病例的操作	134
运用标签来交流	136
在创建新病例时添加标签	136
在订购时添加标签	137
查看病例详情上的标签	137

简介

Medit Link

Medit Link是一款旨在促进诊所与实验室之间的交流合作进而为各方提供优化作业流程的协同式工具。

其可基于每个账户的类型及权限来提供差异化的功能。此外，该程序还提供了简单易懂、便于使用的用户界面以让用户能够轻松管理作业流程、通过口内与模型扫描仪进行扫描、订购病例以及设计并制造修复体。

Medit Link包含网页端服务及电脑应用软件(App)。

服务概览

		网页端	App
		- 注册及管理账户 - 搜索及管理合作伙伴 - 运用“网络浏览器”通过共享链接来共享病例 - 访问从App中所创建的病例 - 管理订单	- 输入表格信息 - 扫描 - 管理订单 - 关联CAD - 管理患者
诊所	管理员	可搜索并管理合作伙伴以及您的诊所并共享病例。 - 控制面板 - 患者 - 病例库 - 订单管理 - 病例分享 - 合作伙伴 - 会员 - 我的信息	可输入表格信息、扫描、下订单并管理患者。 - 控制面板 - 患者 - 病例库 - 订单管理 - 病例分享 - 应用商店 - 垃圾箱
	成员	- 患者 - 病例库 - 订单管理 - 病例分享 - 我的信息	- 患者 - 病例库 - 病例分享 - 订单管理 - 应用商店 - 垃圾箱
实验室	管理员	可搜索并管理合作伙伴以及您的实验室并共享病例。 - 控制面板 - 收件箱 - 技工病例库 - 病例分享 - 合作伙伴 - 会员 - 我的信息	可输入表格信息、扫描并管理患者。 - 控制面板 - 收件箱 - 技工病例库 - 病例分享 - 应用商店 - 垃圾箱
	成员	- 收件箱 - 技工病例库 - 病例分享 - 我的信息	- 收件箱 - 技工病例库 - 病例分享 - 应用商店 - 垃圾箱

云服务

Medit Link支持通过亚马逊网络服务(AWS)自动上传/下载数据库及文件。

存储在云端的数据将自动与公司内多个用户的计算机实现同步以便其能够随时从任何计算机上访问到该数据。而以云端为基础的备份及恢复功能还可确保您所有数据的安全性。即使在计算机突然发生故障导致数据丢失的情况下, 它也依旧能保证您的数据得到安全保存。

不仅如此, 云服务也可让牙医与实验室之间能够更快速地共享数据, 进而免去了通过电子邮件或手动传输扫描文件所带来的诸多繁琐及不便。与患者信息相关的所有数据均会被安全加密、存储及传输。而且, Medit也会遵守诸如HIPAA与GDPR等医疗法律及法规。

带有订购系统的作业流程管理平台

Medit Link可提供其自己的订购系统。

- Medit Link可让用户在牙医与牙科实验室之间建立合作关系并快速便捷地共享数据。
- 您可以查看并管理订购状态。

系统要求

注意

如您想通过您的扫描仪来使用扫描软件，则请参考Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs的系统配置要求。

Windows的系统配置要求

	笔记本电脑&台式电脑
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz或更高
内存	16GB或更高
显卡	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) 或更高/或等同于AMD显卡
操作系统	Windows 10 64位 (不可用于32位) 或更高

macOS的系统配置要求

	Mac
处理器	配备8核GPU、7核GPU、16核Neural Engine的M1
内存	16GB或更高
操作系统	Monterey 12或更高

网页端服务的系统要求

推荐浏览器

	浏览器
电脑端	Chrome、Firefox、Safari、Edge (Chromium)
Android	Chrome、Firefox
macOS	Safari、Chrome、Firefox


移动设备的最低系统要求

	Android	iOS
设备	相当于Galaxy S7或更高	相当于iPhone 7或更高
操作系统	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
内存	3GB或更高	2GB或更高
应用处理器	Snapdragon 710以上	A10 Fusion


在Windows上安装

Medit Link将与扫描获取程序——Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs——以安装包的形式被一并安装。


1. 运行Medit_LinkSetup.exe。
2. 选择用于安装的语言。
3. 选择安装Medit Link的文件夹。请阅读并同意《许可条款及条件》并点击“安装”。

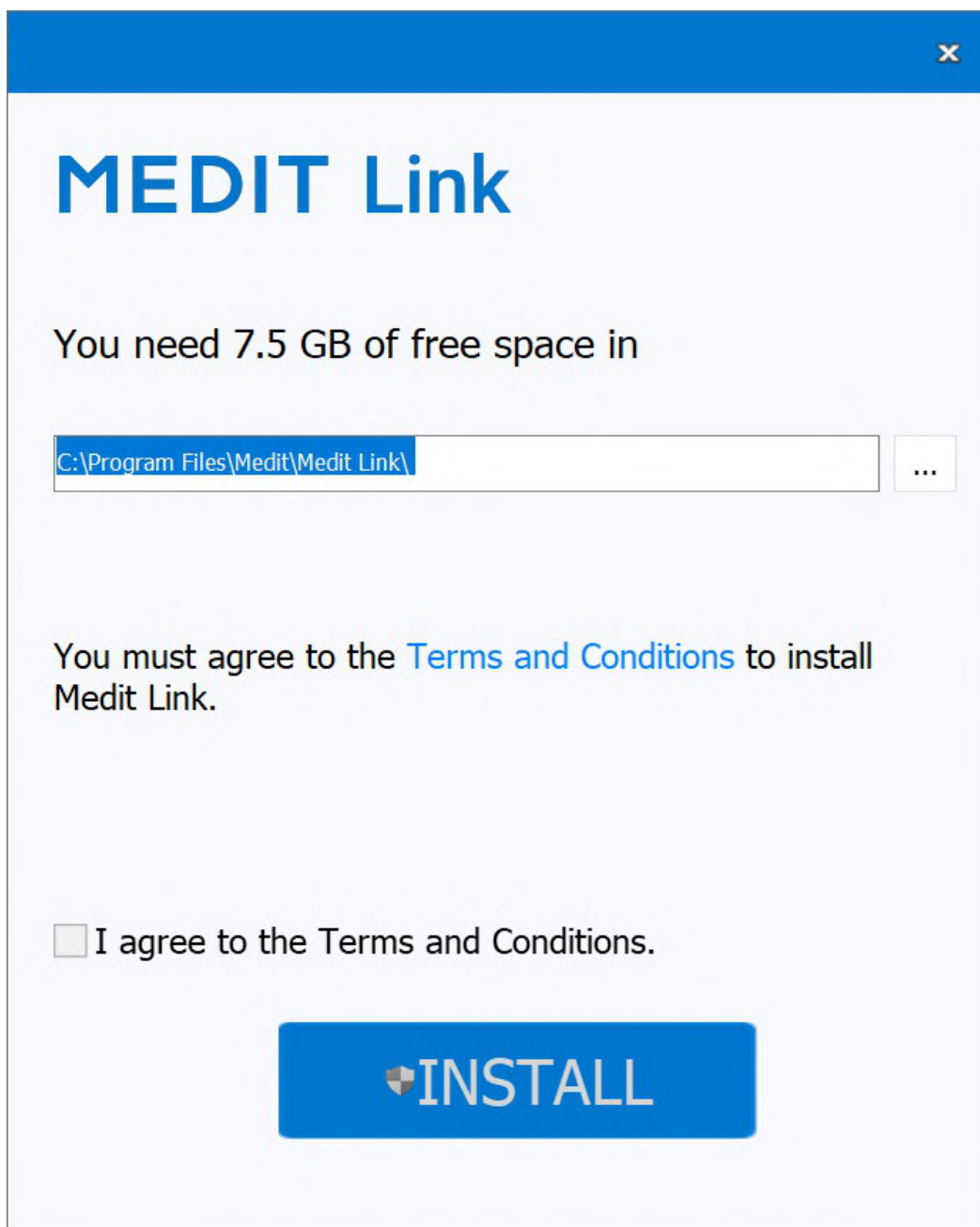

4. 请确保在进入下一步前将扫描仪线缆从电脑端断开。如扫描仪已连接至您的电脑端，那么安装将无法进行。
5. 程序将自动安装并可能需要几分钟的时间。切勿在安装完成前关闭您的电脑或拔掉电源插头。

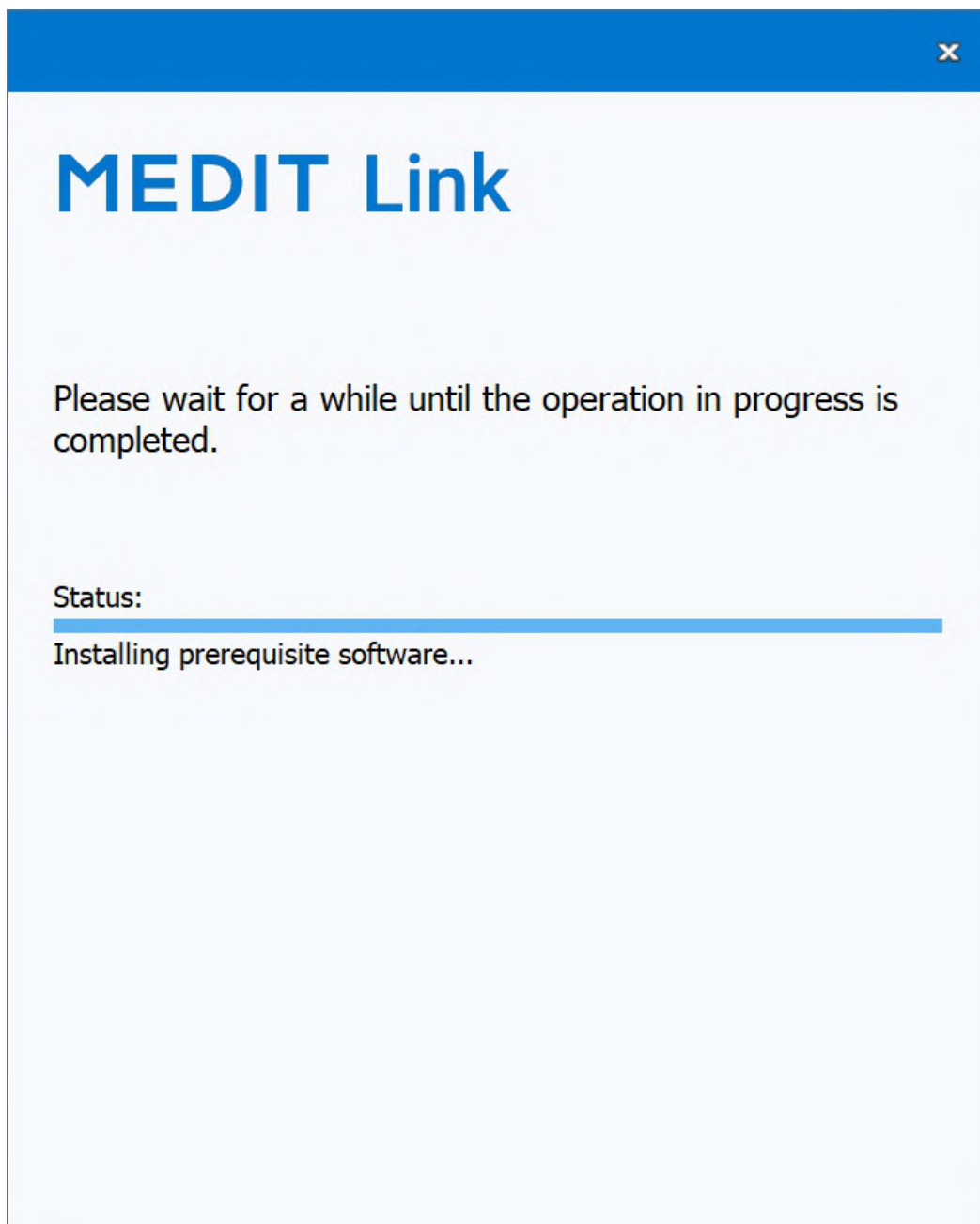

6. 请在安装完成后重启您的电脑。如您没有扫描仪, 则您便无需重启电脑。

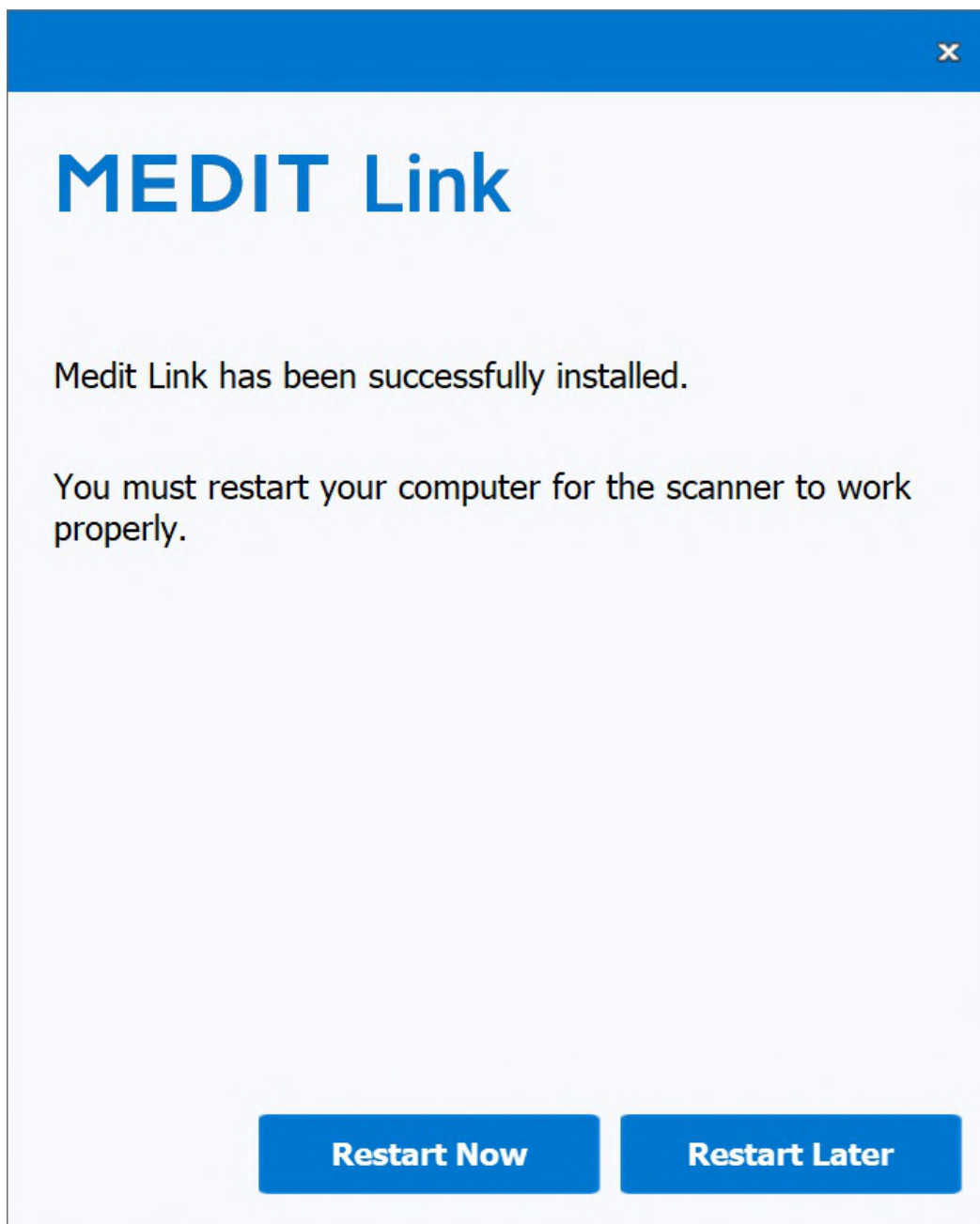


 注意：

如您在安装完成后不重启您的电脑，则扫描仪的功能可以无法正常运行。


在macOS上安装

Medit Link将与Medit Scan for Clinics以安装包的形式被一并安装。


1. 运行Medit_Link_x.x.x.pkg并点击“继续”。

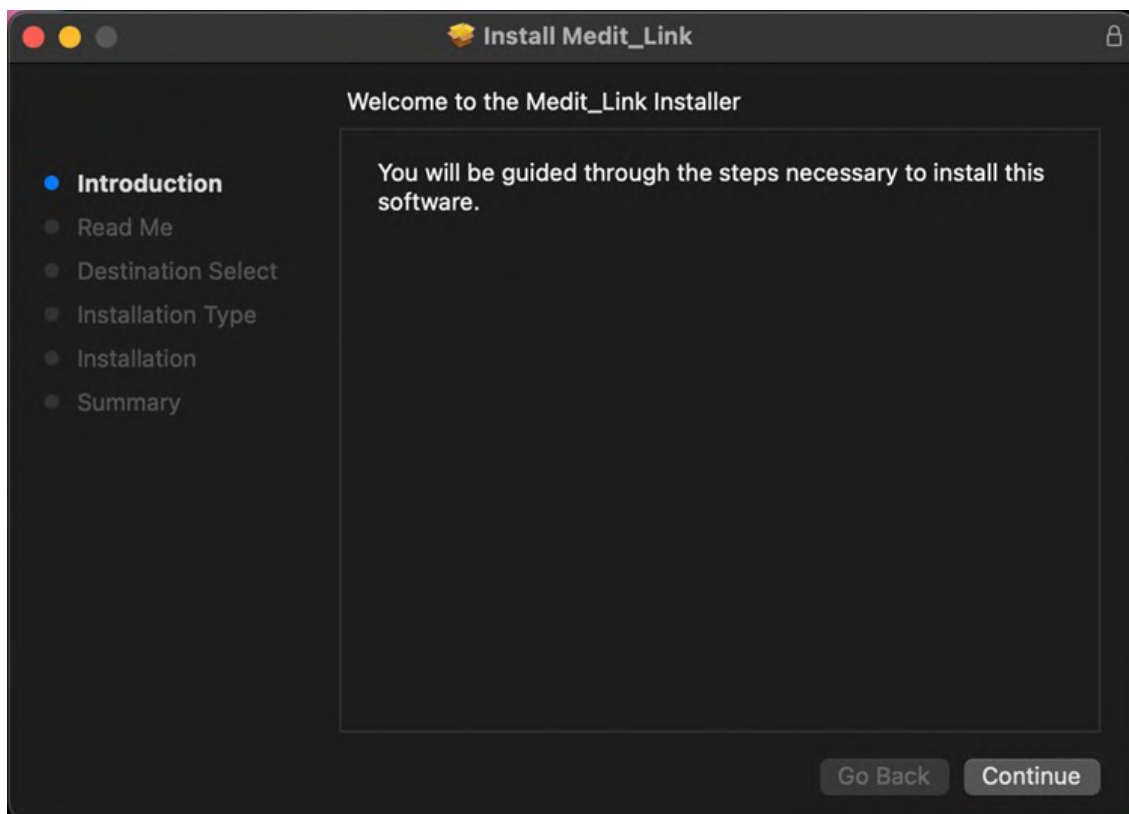


2. 阅读《终端用户许可协议》并点击“继续”。

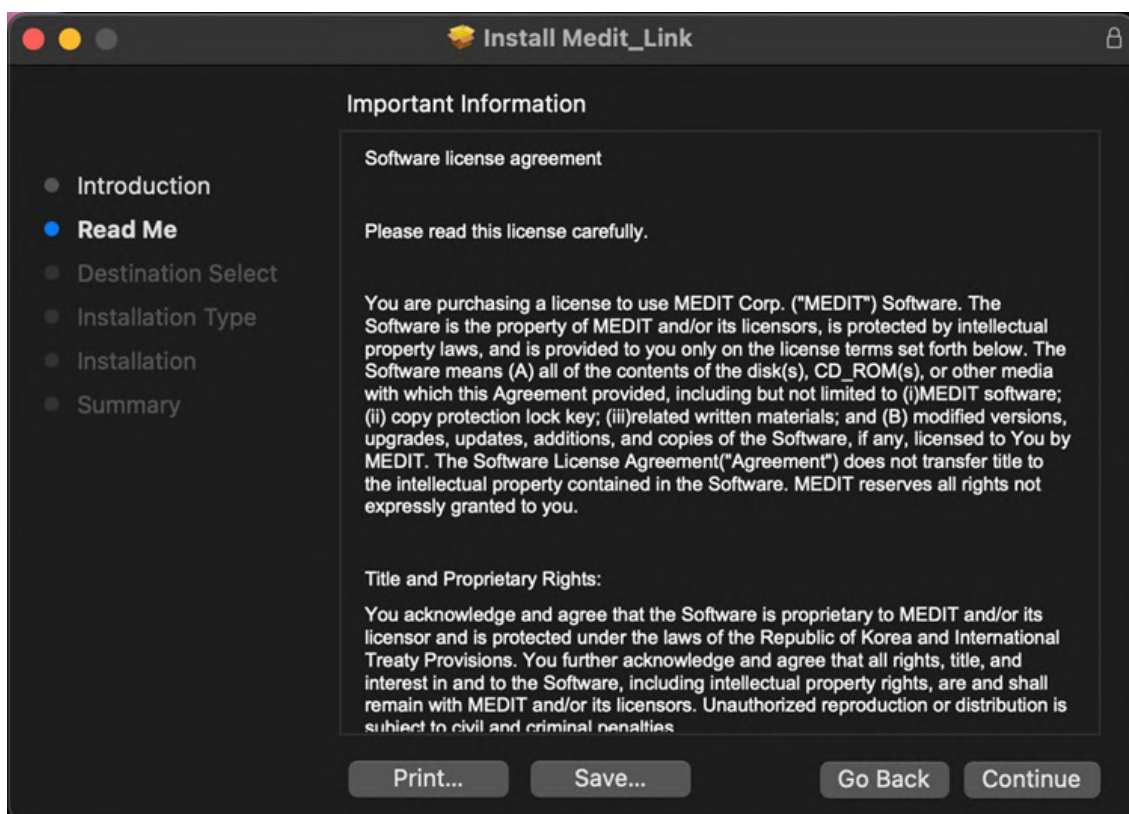

3. 选择要安装到的磁盘并点击“继续”。

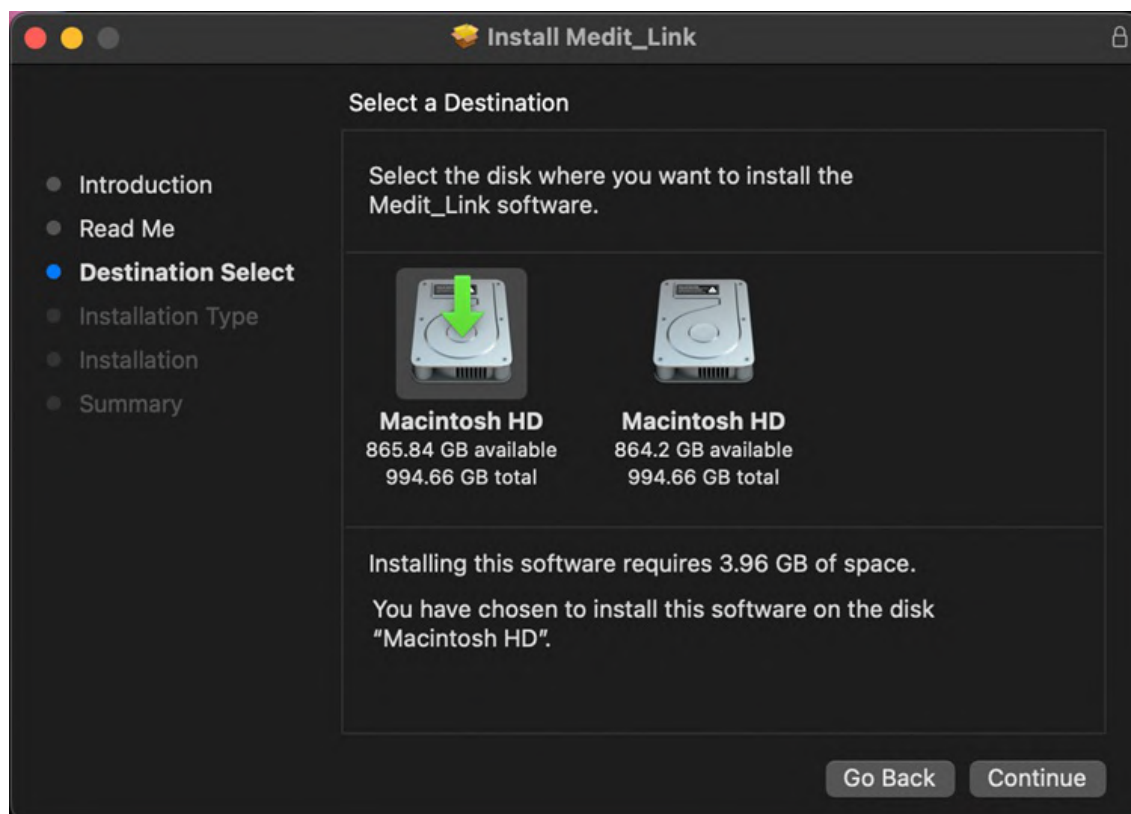


4. 点击“修改安装位置...”即可修改安装的相应位置。

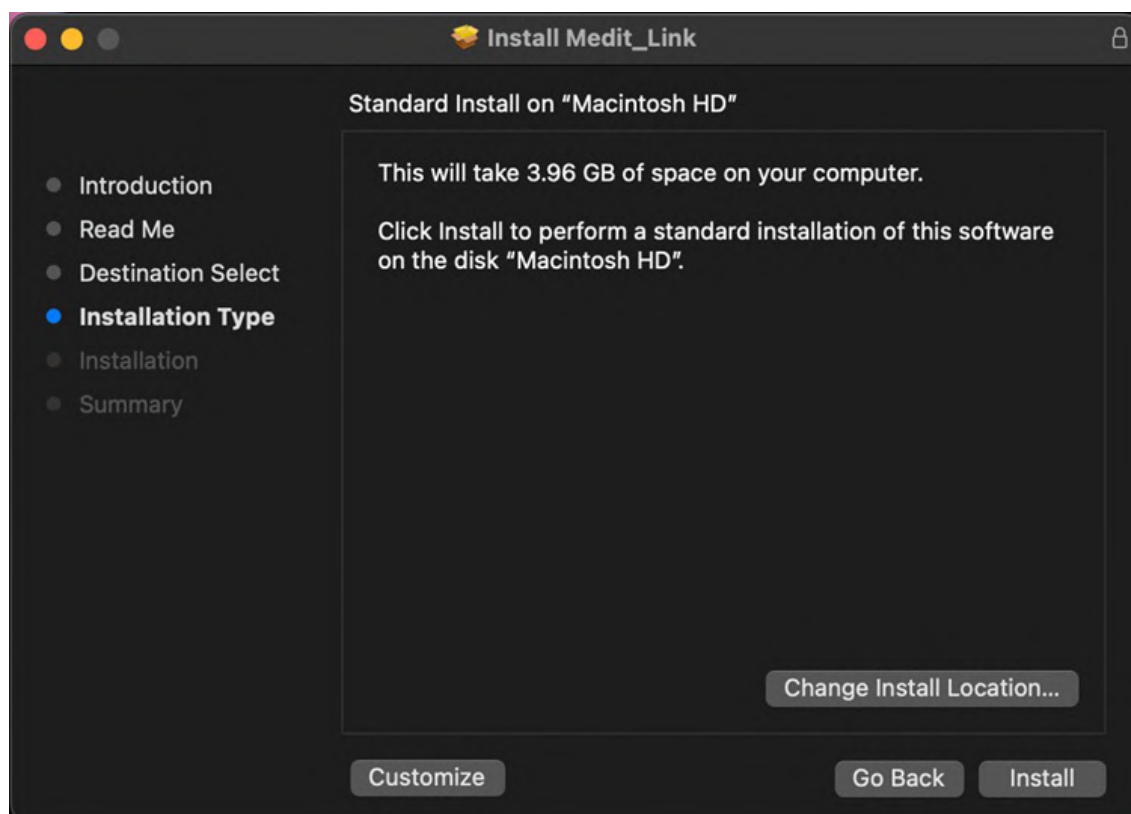


5. 点击“安装”并在要求时输入您的Mac密码来授权安装。



6. 稍等片刻直至安装完成。

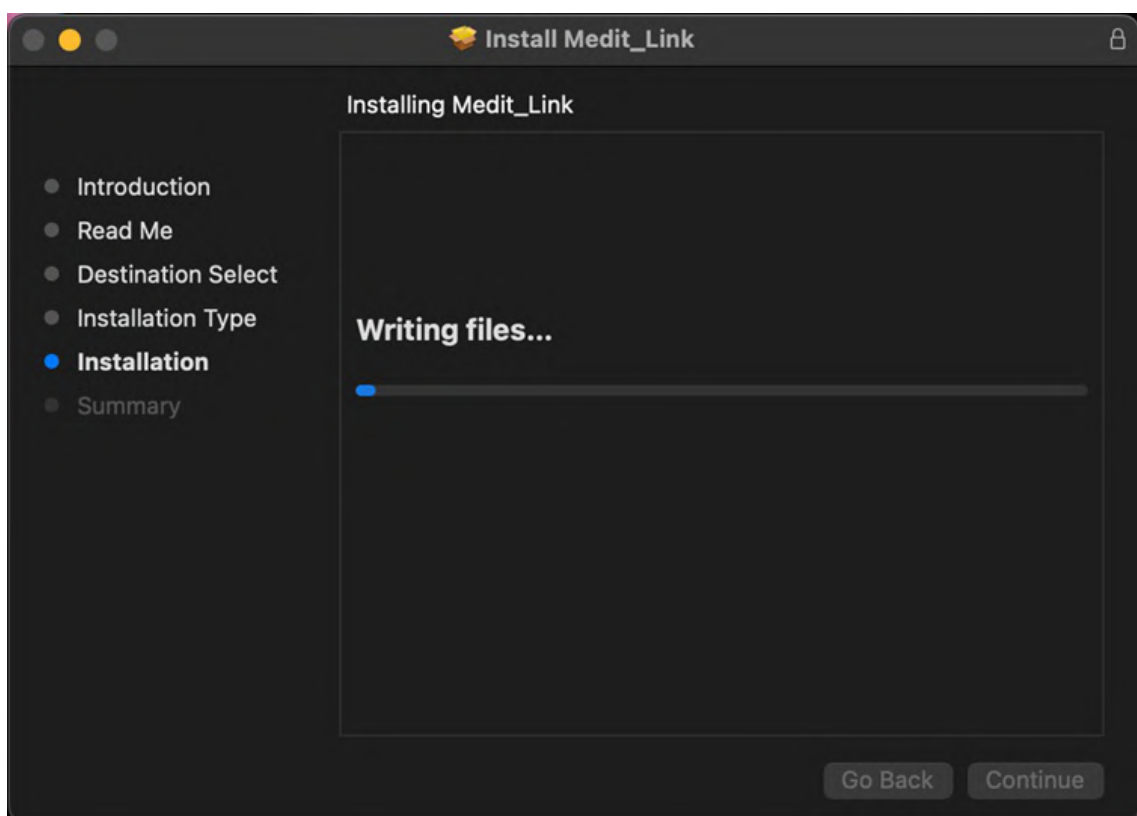


7. 点击“关闭”即可退出安装窗口。

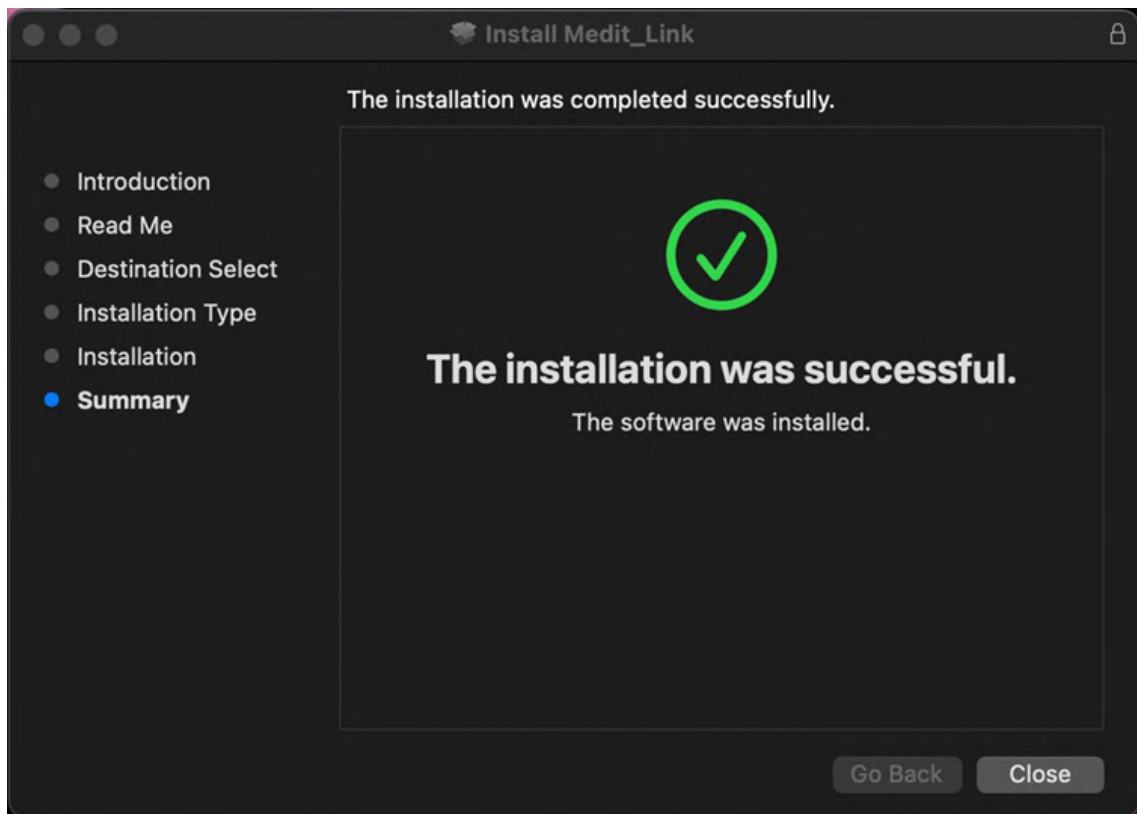

注册&登录

Medit Link网站

请在www.meditlink.com中注册Medit Link的服务。

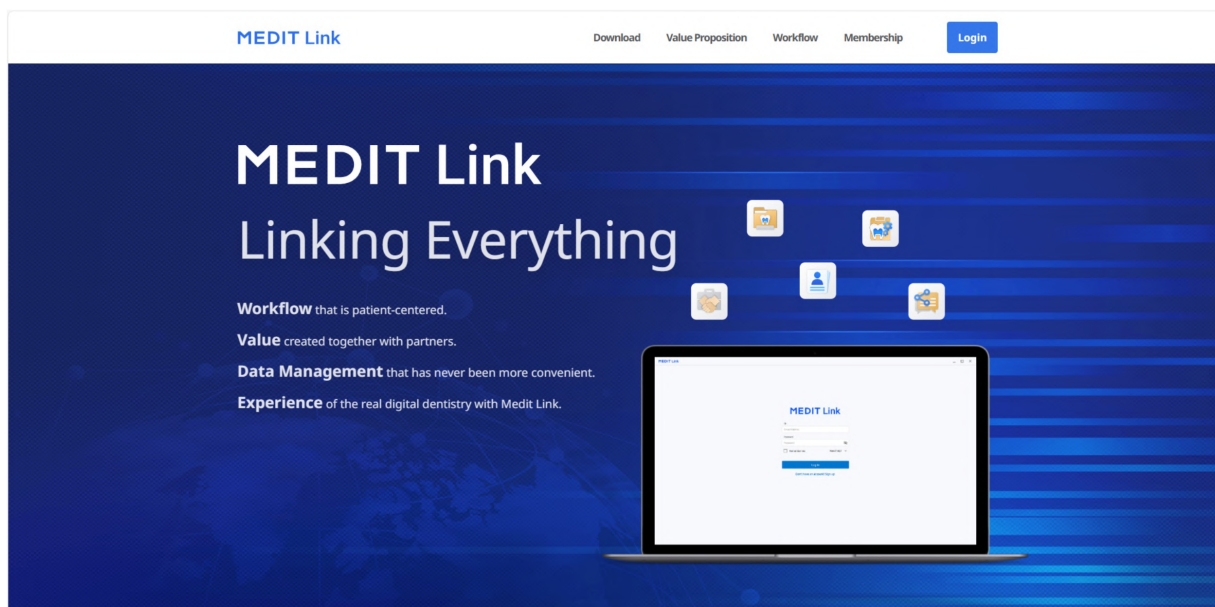

🔍 注意

请在www.meditlink.cn中注册Medit Link China的服务。

注册

如想使用Medit Link的相关服务，则您必须注册一个账号。您可以在以“诊所”或“实验室”的身份注册了账户后使用Medit Link所提供的各项功能。

用户可以选择以下4种账号类型的任意一种来注册会员并根据账号类型来使用具有全部或有限功能及特权的服务。

- 诊所 - 管理员
- 诊所 - 成员
- 实验室 - 管理员
- 实验室 - 成员

管理员通常是您所在公司的代表并将有权使用Medit Link的所有功能及服务。相比之下，会员账户的访问权则往往受限。

请按照下列步骤来注册会员：

1. 点击登录页上的“您还没有账号？马上注册吧！”

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. 在阅读了所提供的说明后, 点击所需账号类型上的“注册”按钮。

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 如下图所示的注册表格将会弹出。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

- 输入诊所或实验室名称并根据您所需的账号类型进行如下操作：
 - 如您将以“管理员”的身份注册，那么请点击“检查可用性”来查看所输入的名称是否可用。
 - 如您以“成员”的身份注册，那么则请点击“搜索”。管理员须在您注册账户前已经注册了您的公司。
- 填写剩余的登记表格信息并点击“注册”。

注意

如您在注册时同意接收营销信息，那么您随后便将从Medit收到有关产品及服务的实用信息。

- 您将随即收到一份用于验证的电子邮件。
- 如想要完成注册流程，那么便请您通过所收到的链接来验证您的电子邮箱地址。

登录与欢迎页面

- 在登录页上输入您的电子邮箱地址及密码并点击“登录”。

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)




English (United States)



2. 如您未填写您的企业信息, 那么下方的弹窗便将出现。

Welcome, stage-test-wh!

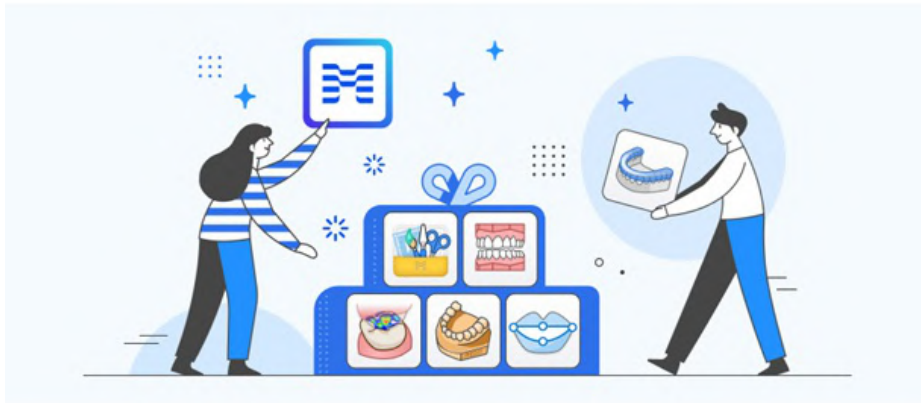

1 2 3

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

🔑 注意


如想使用Medit Link的服务，则应使用管理员账户来输入您的诊所或实验室信息。

3. 点击“前往我的诊所”或“前往我的实验室”按钮并输入诊所或实验室信息，包括企业名称、封面/标识图片、您提供的服务项目、办公地址、办公电话等。
4. 您可以随时在从Medit Link网页端的“我的信息” > “我的诊所或我的实验室”标签中编辑您在欢迎页面中所输入的信息。

控制面板

“控制面板”概览

您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

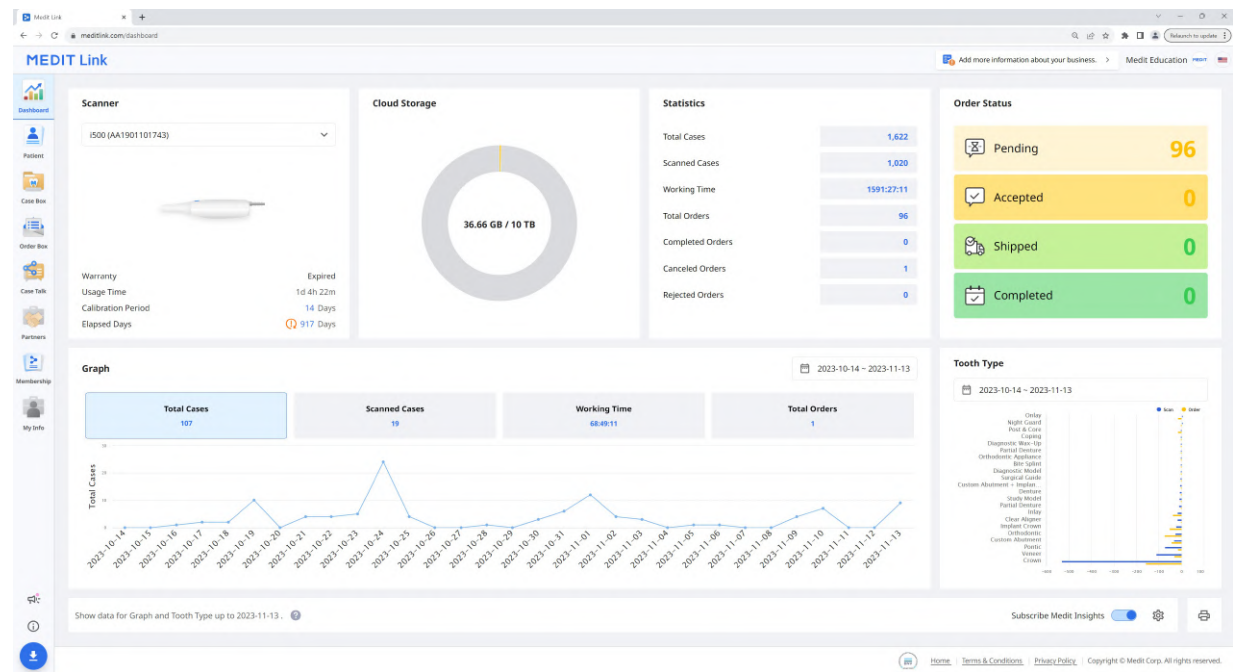

“控制面板”中的图表可显示您在Medit Link中所完成的全部工作的统计数据。

扫描仪	提供当前所使用扫描仪的相关信息，包括保修期、扫描仪使用时间、校准间隔及校准经过时间。
云存储	显示云端存储的总容量及当前使用量。
统计数据	基于工作状态提供病例的相关统计数据。
订单状态	基于订单状态提供病例的相关统计数据
图表	按时段显示工作信息。
牙齿类型	通过治疗信息提供有关扫描与订单数量的统计数据。


Medit Insights

Medit Insights旨在为您提供相关的报告服务并以此来帮助您分析您在Medit的使用情况统计数据。

注意：

下列服务不可用于Medit Link China。

- Medit Insights

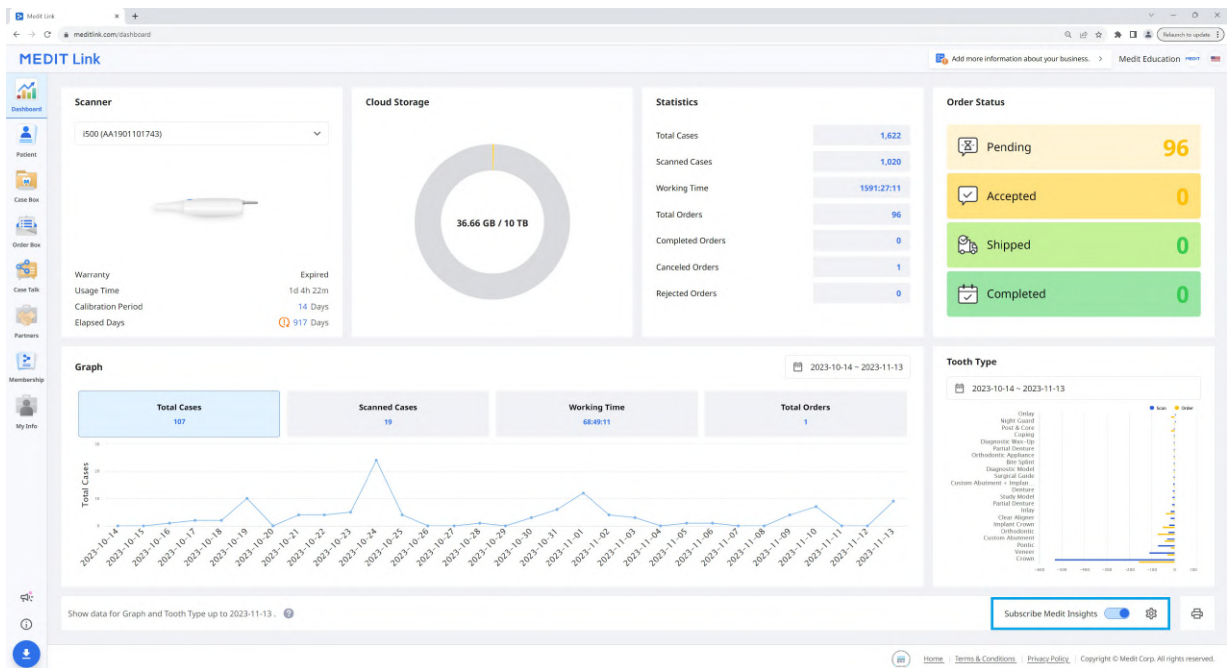

订阅Medit Insights

您可以在每个月的第二天收到一封包含统计报告的电子邮件。无需任何附加的注册过程。只需开启“订阅Medit Insights”选项即可。

如您不想使用您注册Medit Link账户时所使用的电子邮箱地址，那么您可以设置另一个电子邮箱地址来接收Medit Insights的报告。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

您将在每个月的第二天收到包含如下图所示的统计数据的电子邮件。

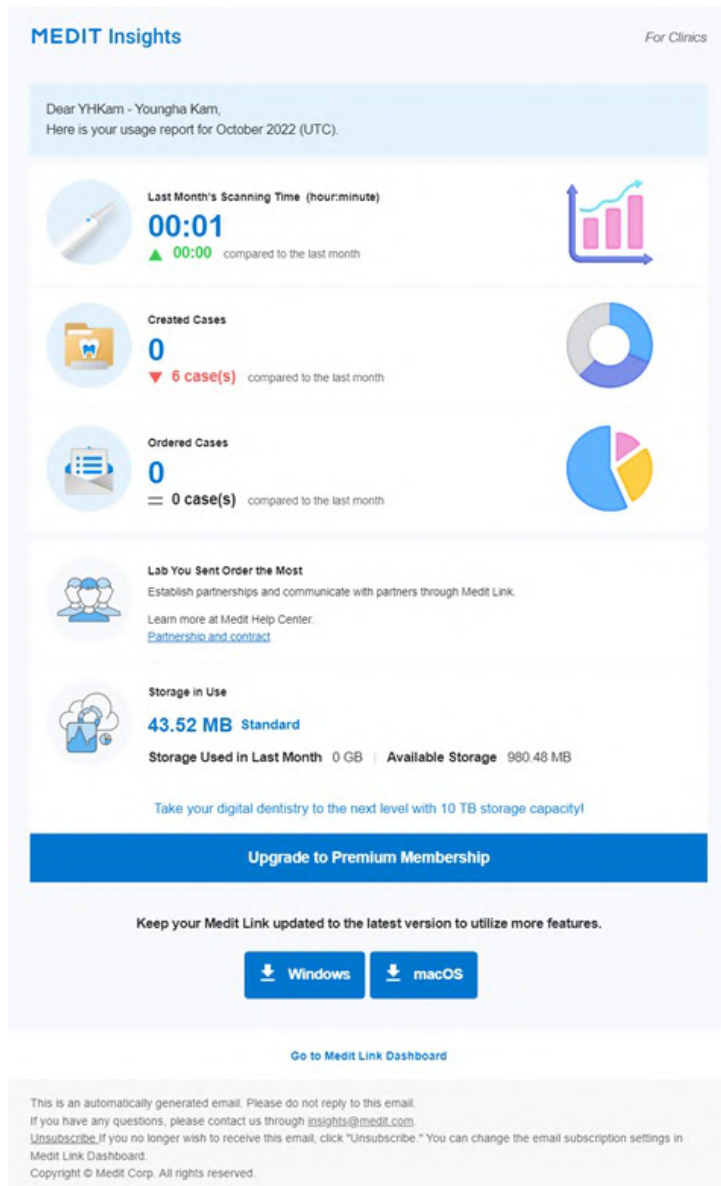

标题栏	Medit将在此处提供一些实用的提示及信息。 * 如您不想看到这一标题栏，则请在“我的信息”>“我的账号”中取消对“营销及推广协议”的勾选。
统计数据信息	可显示诸如扫描时间、创建病例数以及订购量最大的实验室等统计数据信息。
Medit Link下载	可提供Medit Link的下载链接。
控制面板	所有统计数据信息均基于您的“控制面板信息”。您可以在控制面板中了解更多详情。


退订 MEDIT Insights

在控制面板中关闭“订阅Medit Insights”或在收到的电子邮件中点击“退订”。

患者

您可以基于患者姓名与患者ID来管理病例。


所有通过Medit Link应用程序注册的患者均将显示在列表中, 从而可让您能够更容易地来管理患者及其病例。

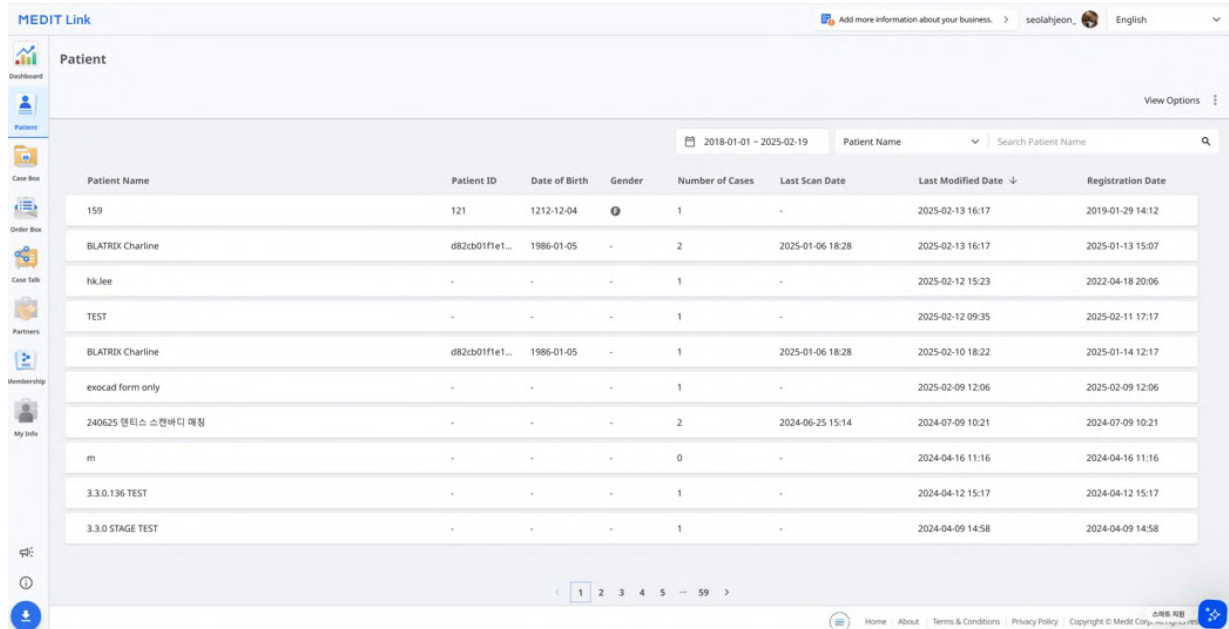

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date ↓	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATREX Charline	d82cb01fe1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATREX Charline	d82cb01fe1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엘티스 스캔바디 매핑	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

搜索患者


1. 从“患者列表”右上角下拉式菜单中的“患者姓名”与“患者ID”之间选择您的搜索条件。

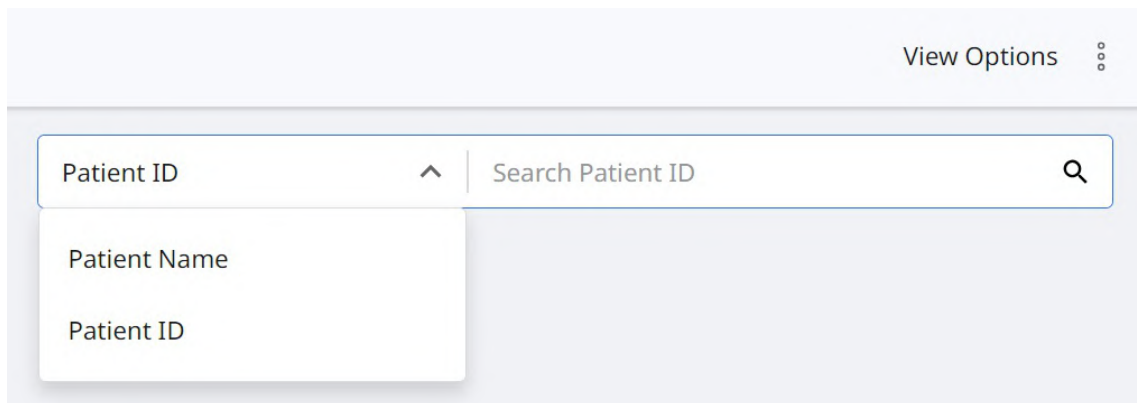

2. 根据所选择的搜索条件输入要搜索的患者姓名或患者ID。
3. 只有输入了患者姓名或ID的患者才会出现在列表中。

病例库/技工病例库

病例库(诊所)或技工病例库(实验室)可显示用户在Medit Link App中所创建的所有病例。同时,您还可以在无需安装单独程序的情况下通过网络浏览器来查看文件。

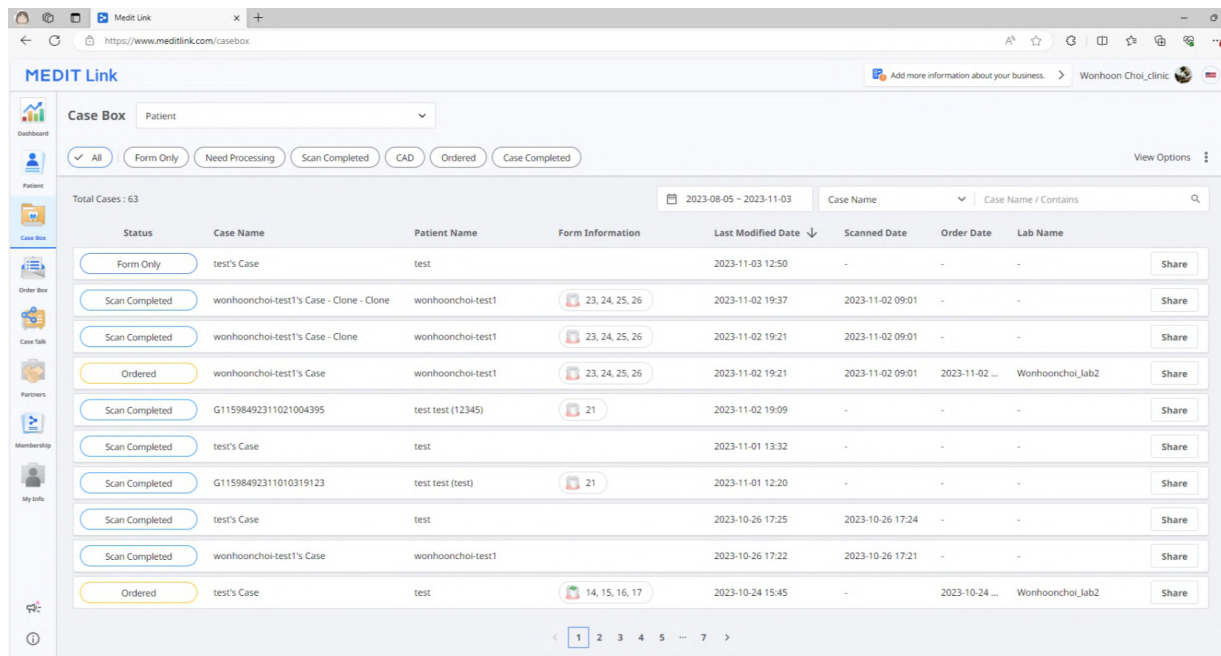


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'Total Cases: 63' indicator is present. A date range filter shows '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar for 'Case Name' is also visible. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button. The table is paginated with a '1' button highlighted.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

病例筛选

按患者筛选

您可以按患者来筛选病例。其适用于您在为特定的患者查找病例时的情况。

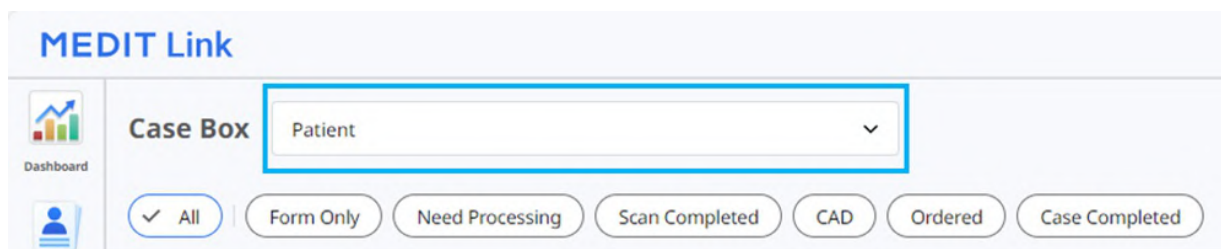

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a blue box, and it is set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 在“搜索”字段中输入患者姓名。

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. 从搜索结果的列表中选择相应的患者。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -+ 2 ^

test⊗

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. 只有所选患者的病例会显示在列表中, 从而可更容易让您找到您要操作的病例。

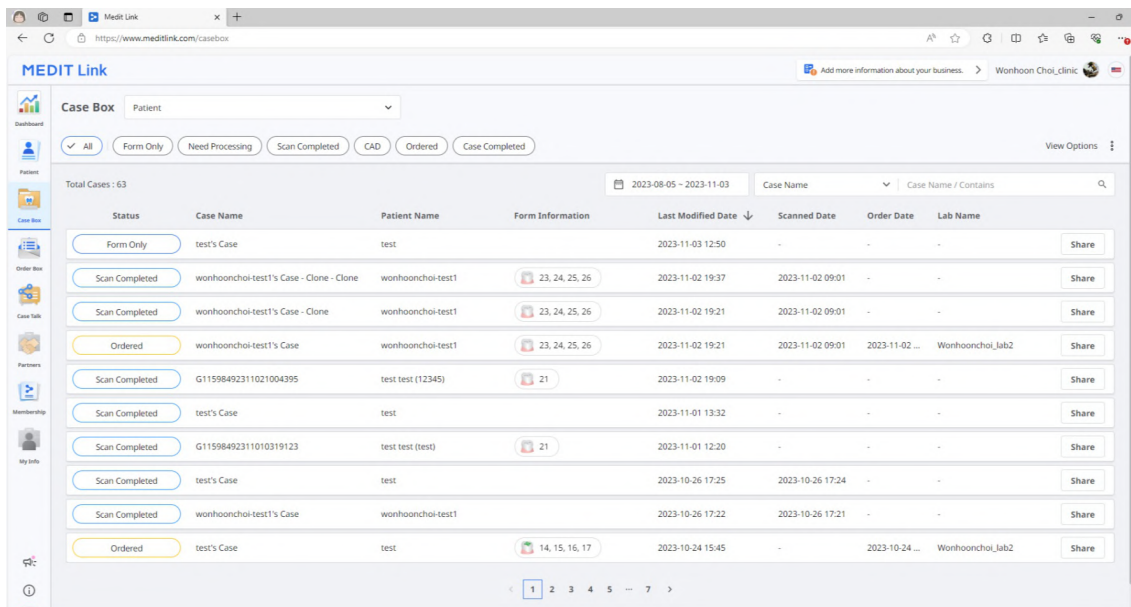

按状态筛选

您可以基于状态来筛选病例。

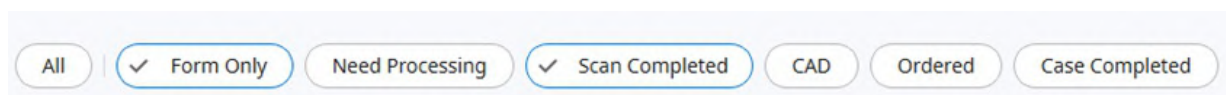

- 用户可以点击其想要查看的状态。浏览器将仅显示所选状态中的病例。
- 用户可以一次性选择多个状态。

程序将基于账号类型来提供下列状态类型：

病例库(诊所)	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已订购/病例已完成
技工病例库(实验室)	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已完成

按时间段筛选

您可筛选并显示在您设置的时间段内进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。



2. 选择时间范围。

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- 全部: 显示全部病例。

- 自定义时间范围: 指定对病例进行过修改的起始及结束日期。
- 当天: 显示在当天进行过最后一次修改的病例。
- 昨天: 显示在昨天进行过最后一次修改的病例。
- 最近7天: 显示除当天外在最近7天进行过最后一次修改的病例。
- 最近30天: 显示除当天外在最近30天进行过最后一次修改的病例。
- 最近90天: 显示除当天外在最近90天进行过最后一次修改的病例。
- 本月: 显示本月的病例。
- 上一个月: 显示上一个月的病例。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

通过搜索筛选

您可以利用搜索能力来快速便捷地搜索所需的信息。

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

程序将基于账号类型来提供下列搜索选项：

病例库(诊所)	病例名称、患者姓名、患者编号、实验室名称
技工病例库(实验室)	病例名称、患者姓名、诊所名称、订单编号

病例详情

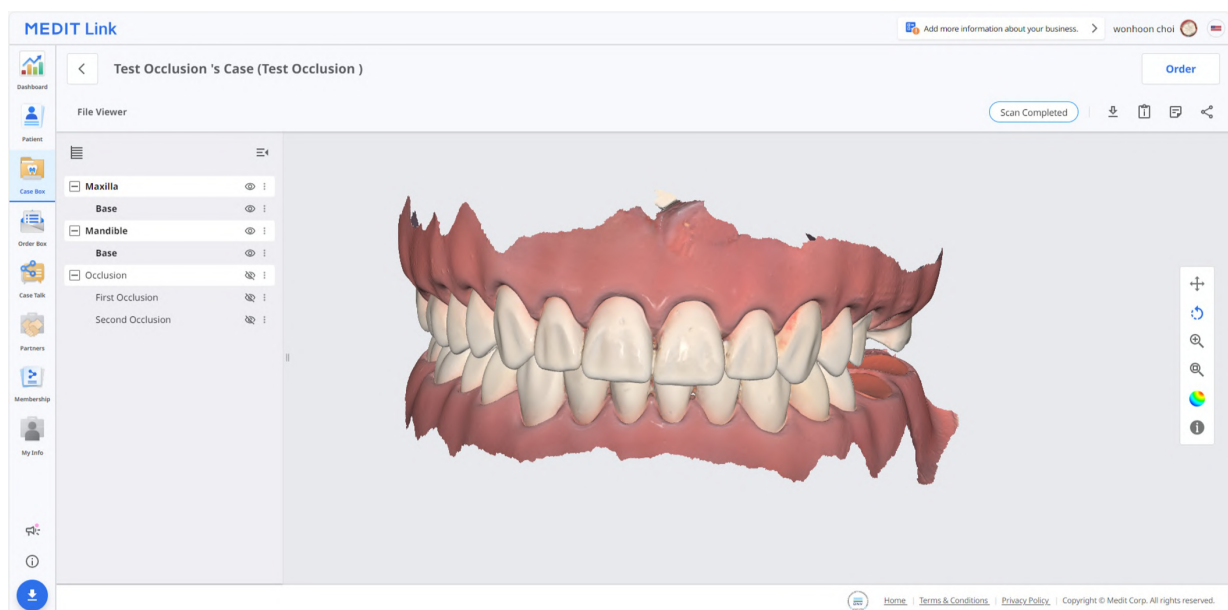


病例库/技工病例库中提供下列病例管理工具。

	病例状态	可显示病例的状态。
	转至订单管理/收件箱	可在另一个工具箱中为同一病例提供快捷方式(病例库 ↔ 订单管理; 收件箱 ↔ 技工病例库)。
	下载	可将病例的文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。
	共享	可创建用于共享的链接。 拥有共享链接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如Chrome、Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。

订单管理/收件箱

订单管理(诊所)或收件箱(实验室)可显示用户在Medit Link App中所订购的病例。

订单详情

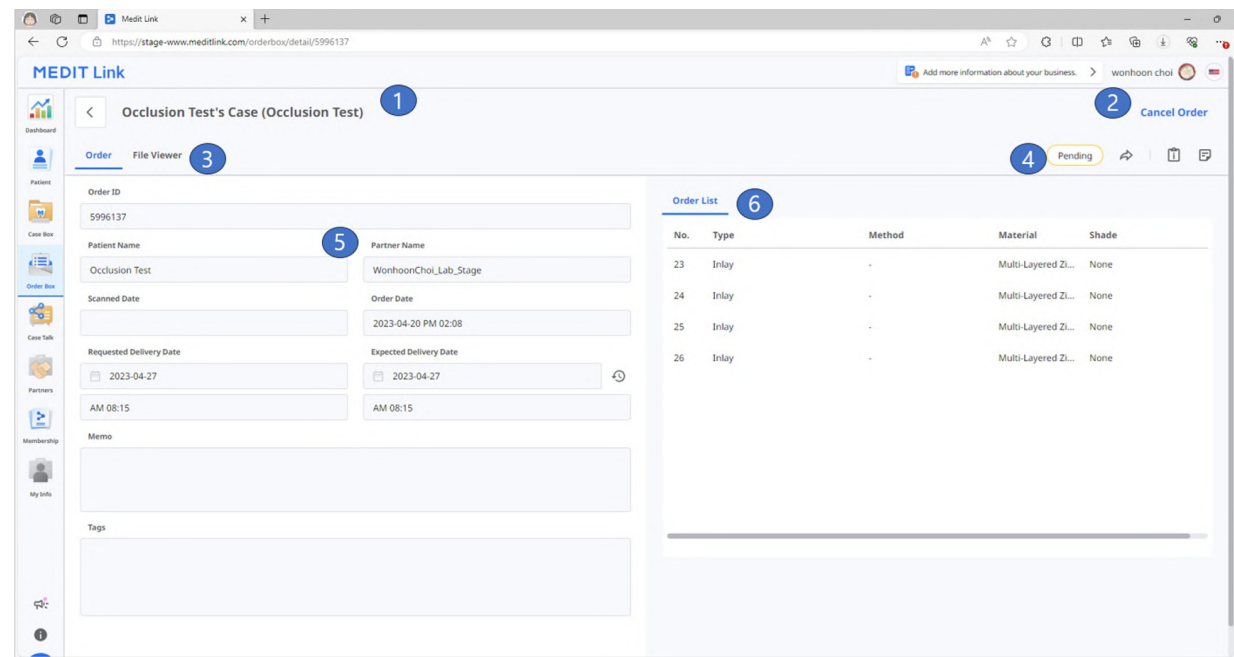

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供进行订单管理的相关功能(接受/取消;交货/收货)。
3	显示可供使用的标签:订单及文件浏览器。
4	可显示管理病例及文件的共享:病例状态、详情的快捷键、病例信息、备忘录&标签等
5	显示包括订单号、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录&标签等订单的详细信息。
6	显示订购产品的信息及发货状态。


订单管理/收件箱中的标签

订购	文件浏览器
可查看诸如订单ID、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录及标签等订单的详细信息。	可查看扫描/CAD操作所生成的文件。文件浏览器可显示并管理程序所获取或附加的3D模型及2D图片。

病例分享

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册成员所共享。

用户可以在Medit Link App及Medit Link网页端中通过“病例分享”查看所有共享病例的列表。

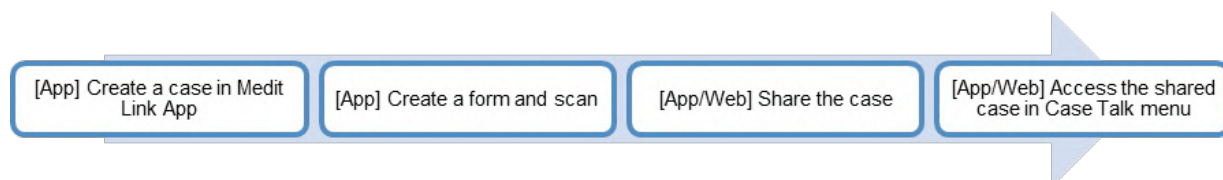


用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。


创建“病例分享”

您可向在病例库/技工病例库中所创建的病例创建共享链接。

1. 找到您要共享的病例并点击右侧的“共享”按钮。

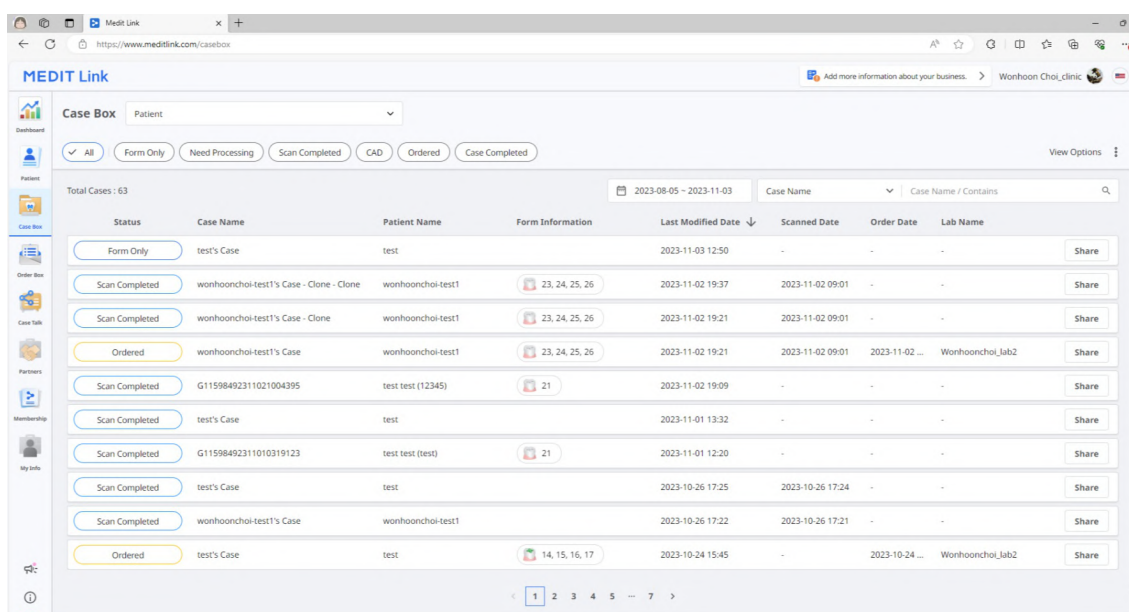

2. 选择您想共享的文件。

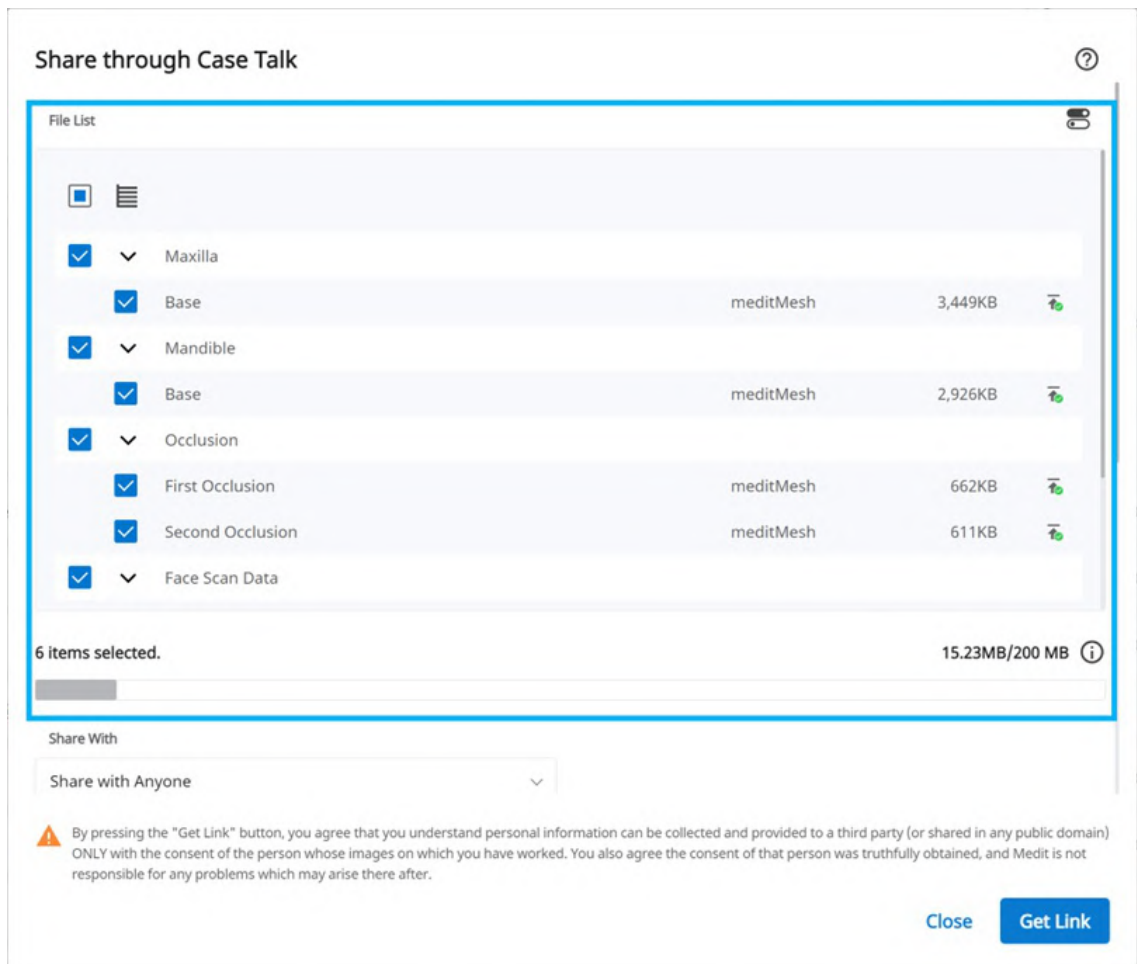

3. 设置共享权限类型与共享选项。
4. 点击“获取链接”即可创建一条共享连接。

设置共享权限类型与共享选项

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

✉

+

☰

❗ Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

📅 2022-06-28

❗ You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

❗ Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

❗ If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

❗ The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

❗ If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

共享人	- 与任何人进行共享 创建一条共享链接。您可以与任何人共享相应的文件。 - 与特定的人共享 创建共享链接并将发送至特定的人。
共享方式	如您选择“与特定的人共享”，那么您可以通过多种方式与其共享链接。 - 电子邮箱地址 - SMS - 合作伙伴
逾期日期	可设置链接的逾期日期。在链接逾期后，您与之共享链接的人将无法再访问文件。您可以将逾期时间延长最多90日(从当天算起)。
PIN码	可设置一个6位数的密码以确保数据的安全。
共享患者姓名	如您勾选该选项，那么拥有该链接的所有人便均可以看到患者的姓名。
授权下载权限	如您勾选该选项，那么拥有该链接的所有用户便均可以下载相应的文件。
允许留言	- 如您选择该选项，您便可以通过共享的链接进行交流。 - 如您取消勾选该选项，那么链接的接收者便只能查看您的留言，无法添加其自己的留言。
留言	您可以在“留言区”输入您的留言内容。

“病例分享”详情

您可以在共享病例中查看相应的文件。“病例分享”详情页面提供如下功能。

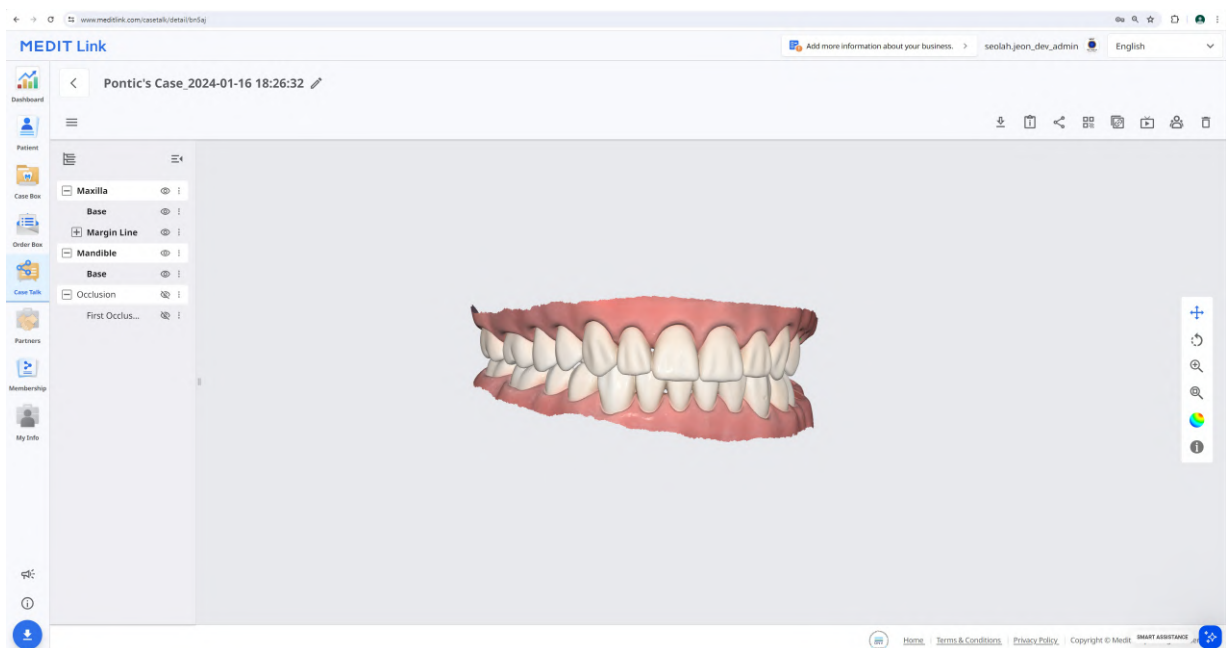

	下载	可将病例的所有文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	修改共享设置。
	二维码	通过二维码共享病例。
	复制链接	可将共享链接复制到剪贴板。复制的链接可将共享文件显示在网络浏览器上。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	删除	可删除共享链接。被删除的共享链接将无法再进行访问。

注意


下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

网络浏览器

您可以在网络浏览器中通过“病例分享”来查看所共享的数据。

还可与有权访问链接的人通过注释及留言来进行沟通交流。

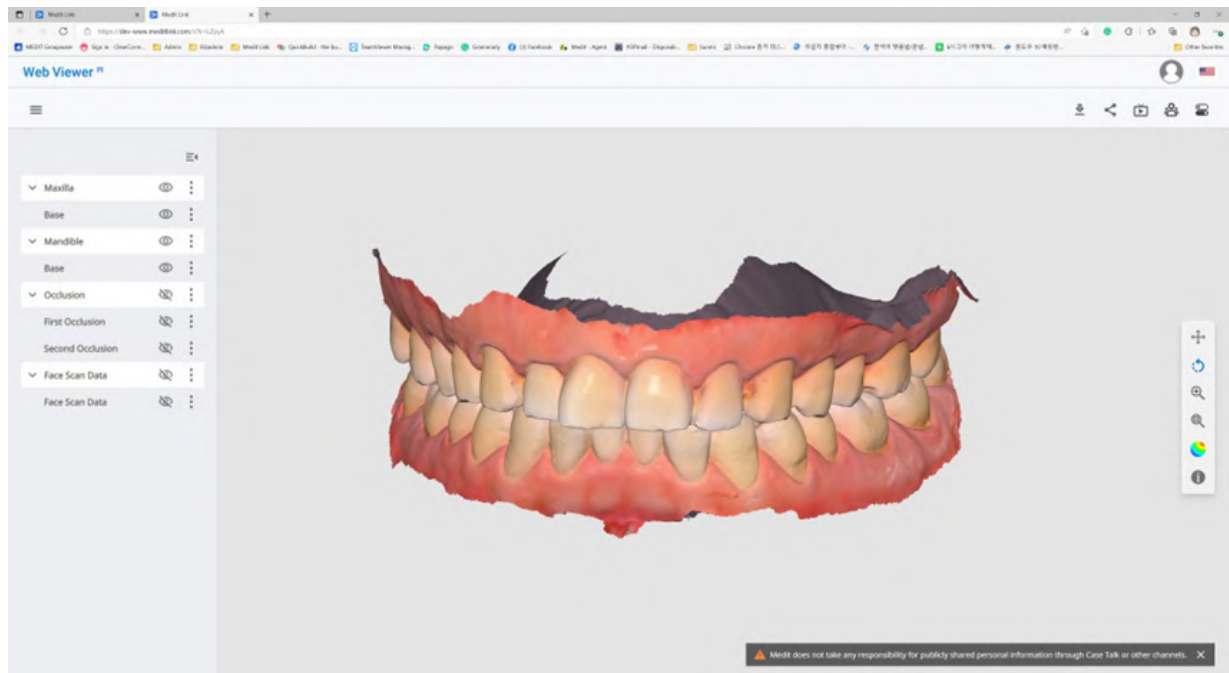

	下载	将所有该病例中的文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	可修改共享设置。
	二维码	通过二维码共享病例。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	牙齿标记	可修改牙齿标记系统。


注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

注释

您可以在3D模型的特定位置上添加注释。拥有该链接的任何人均可查看您添加的注释。

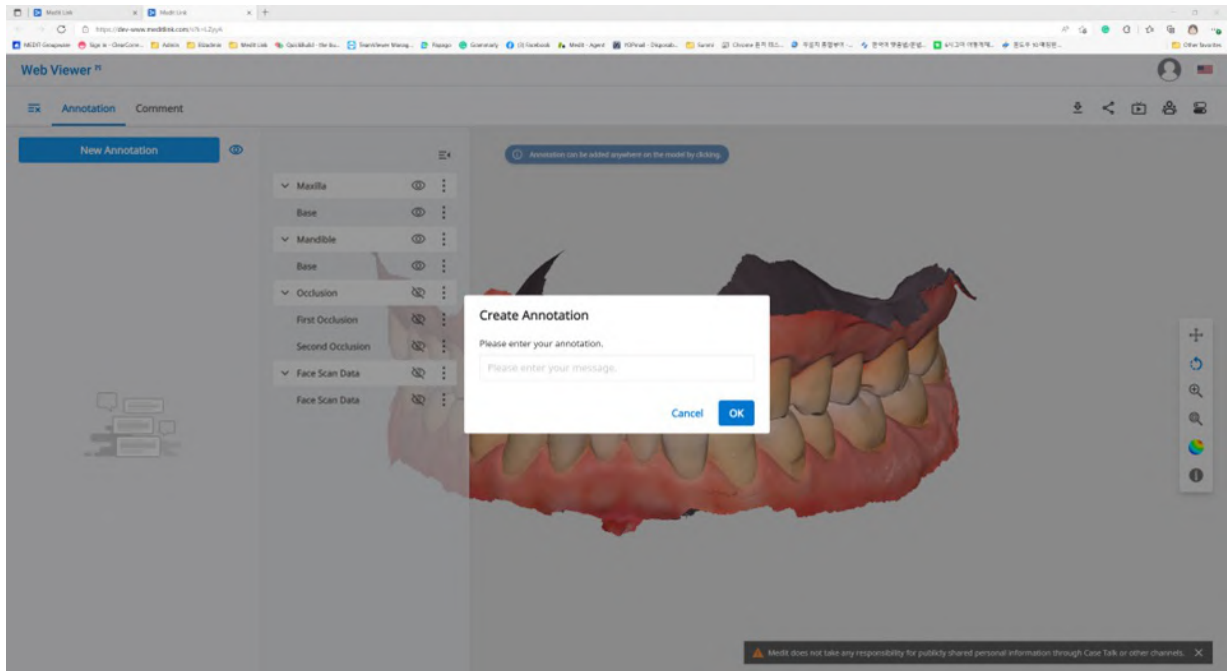

🔍 注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 注释

1. 找到左上角的“菜单”图标并选择“注释”标签。使用“新注释”按钮只需点击一下便可在数据的任何地方上添加注释。
2. 输入注释内容并点击“OK”来将其保存。

3. 您可以将“注释”作为一个简单的交流渠道。
点击所创建的注释来输入回复内容并点击“发送”即可。

留言

您可以在“网络浏览器”菜单中通过“留言”标签来与拥有链接的用户进行沟通交流。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 留言

实时屏幕共享

可实时共享您的屏幕。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享

1. 点击“实时屏幕共享”与所连接的用户共享您的“网络浏览器”屏幕。





2. 点击“OK”开始共享您的屏幕。
3. 可访问链接的其他人须接受“屏幕共享”。
4. 发起“屏幕共享”的用户的电脑屏幕将与收到请求的人的电脑屏幕实现同步化。


数据树

所有数据均将根据数据树中的属性来进行分组及显示。您可以选择“显示或隐藏数据”，“调整不透明度”等操作。

“数据树”控制

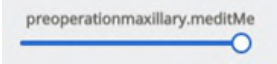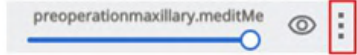显示/隐藏	可点击“眼睛”图标来显示或隐藏视图中的数据。还可按照组别或单独文件来控制数据的可视性。
不透明度	将鼠标悬停在可见的区域上可看到不透明度的滑杆条。 调整滑杆条即可修改您数据的透明度。 
扩展菜单	扩展菜单会显示在每个“数据树”区域的右侧。其包含如下选项：  • 仅显示此: 隐藏除当前数据外的所有数据。 • 隐藏: 隐藏当前数据。

3D模型控制

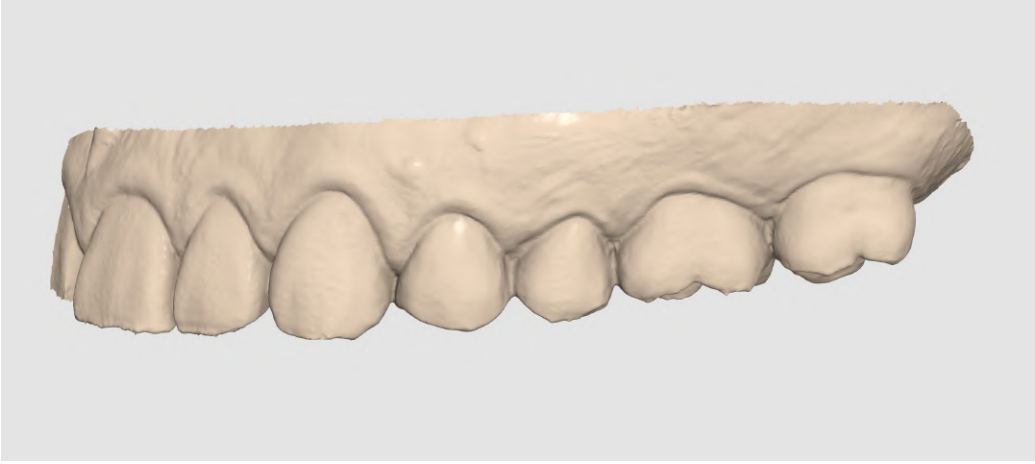+	平移	可移动模型。
○	旋转	可用于旋转模型。
↻	放大/ 缩小	可放大及缩小模型。
⌕	全屏显示	可将模型置于屏幕中央。
●	磨砂	查看具有磨砂效果的彩色数据(Phong渲染)。 
●	单色	查看单色数据。 

合作伙伴

您可以搜索潜在的合作伙伴来申请建立合作关系并查看当前的合作伙伴名单。


 注意：

使用Google地图的相关服务不可用于Medit Link China。

搜索合作伙伴


您可以基于公司名称及/或地址来搜索Medit Link的用户。

在搜索结果中，您可以向您心仪的企业发送建立合作关系的申请。

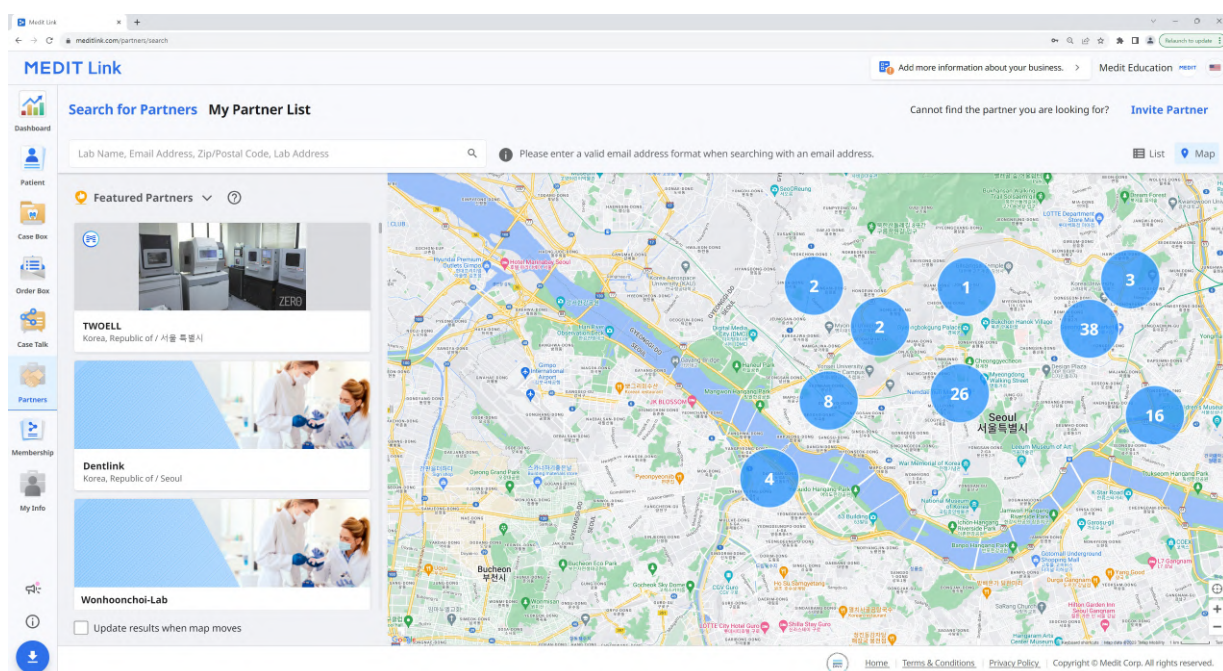

我的合作伙伴名单

您可以在“我的合作伙伴名单”中查看当前您与你所有现有的合作伙伴企业所达成的合作关系。

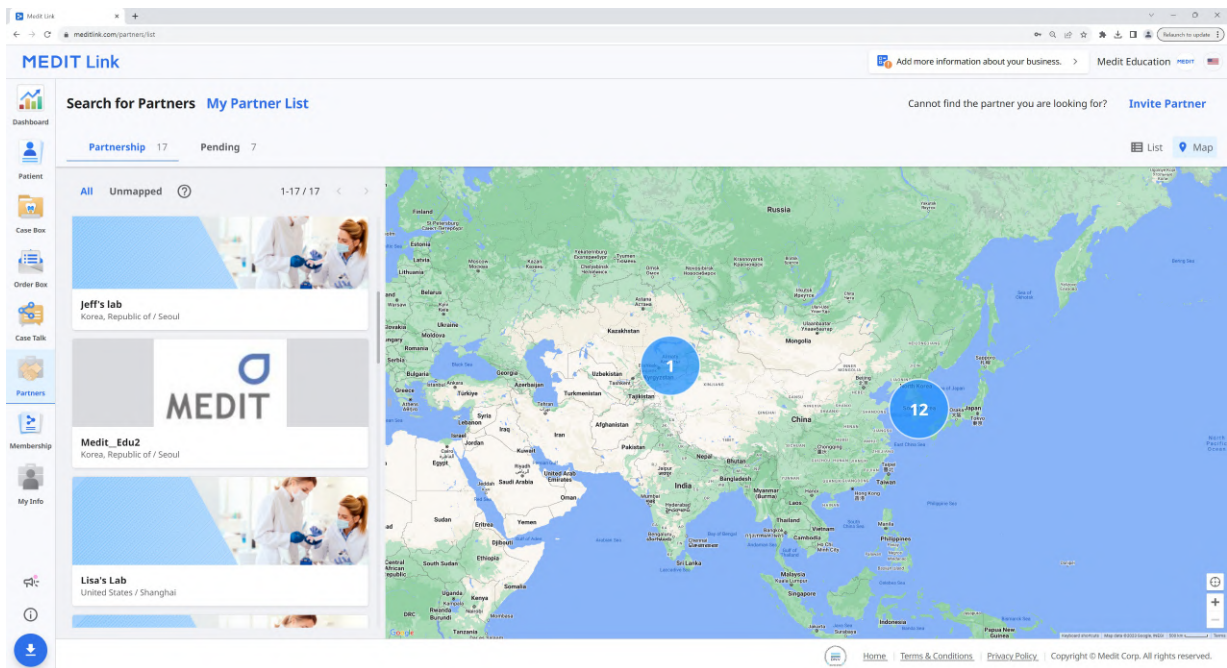

合作伙伴邀请

如您有想要与之合作的诊所或实验室, 那么您可以邀请其加入到Medit Link中。一旦其接受了邀请, 则合作关系将随之自动建立。

1. 点击屏幕左上角的“邀请合作伙伴”。
2. 输入您想要与之合作的公司的电子邮箱地址并向其发送一封带有合作关系申请的邀请函。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. 一旦被邀请的公司接受了邀请并注册了Medit Link, 则合作关系将随之自动建立。


会员

会员

The screenshot displays the 'Medit Link' interface. The top navigation bar includes 'Add more information about your business', a user profile 'seolahjeon_', and a language dropdown set to 'English'. The main navigation menu on the left lists 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info'. The 'Membership' section is active, showing tabs for 'Membership', 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The 'Medit Cloud Storage Plan' is highlighted, with options for '2 GB Plan' and '10 TB Plan'. The '10 TB Plan' is selected, showing a 'Free (Promotion)' status with benefits: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A 'Subscribe' button is visible. Below, '10 TB Plan Benefits' are listed, including a '10 TB Plan' with a code 'qqqq' and an expiration date of '2025-06-26'. A note states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More. Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A Here.' The 'Cloud Storage' section on the right shows a 'Set Period' from '2018-01-01' to '2025-02-17' with filters for 'All', '1 Week Ago', '1 Month Ago', '6 Months Ago', and '1 Year Ago'. A circular progress indicator shows '3.46 GB / 10 TB'. Below, a table lists storage items: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (52.36 GB), and 'Result Files & Attachments' (3.46 GB). The footer contains links for 'Home', 'About', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Co.', along with a Korean text '소속 의료기관'.

Medit Cloud Storage Plan

您可以查看每个会员计划所提供的服务内容，包括折扣券与优惠券以及您当前的订购状态。您可以随时升级您的会员计划或取消您的订购。

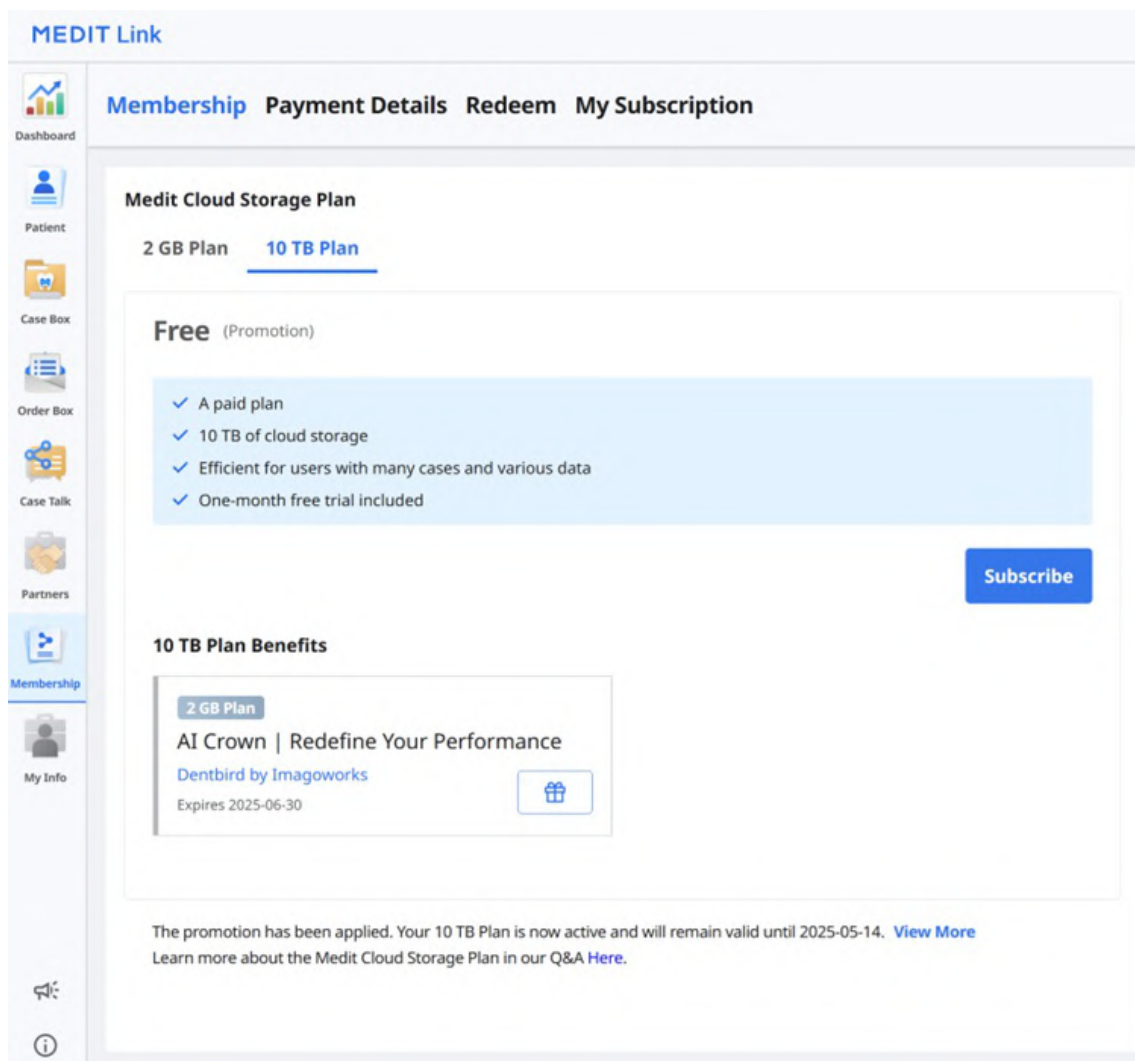

Medit Link可提供下列云存储计划：

2 GB Plan

- 所有已注册用户均可使用的免费会员计划
- 提供2GB的云存储空间
- 适用于新用户

10 TB Plan

- 付费会员计划
- 提供10TB的云存储空间
- 适用于拥有众多病例及各种数据的用户。
- 享有1个月的免费使用期


	2 GB Plan	10 TB Plan
云存储	2GB	10TB
每月费用	免费	\$9.99/月
* 云存储不会将原始数据计入已用空间。		

注意

上述会员计划同样适用于Medit Link China。您可以免费使用10 TB Plan直至相应功能的正式发布。

云存储

您可以在右侧区域中管理您的云存储。

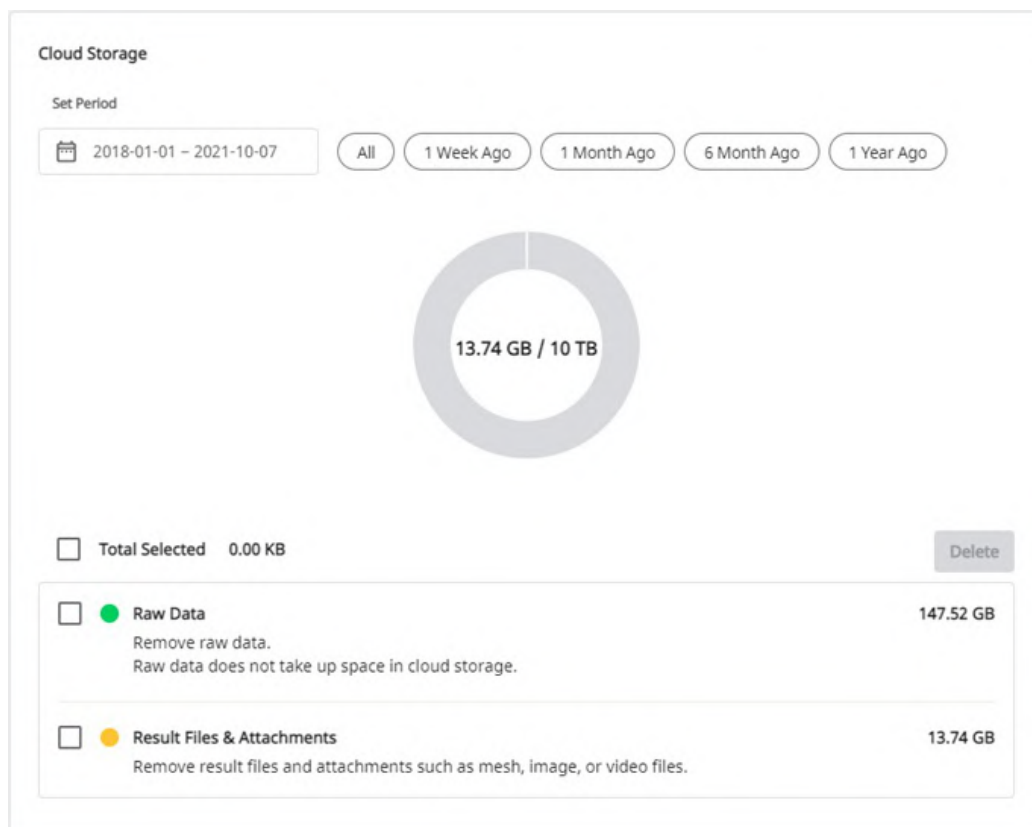

设置时期	可设置特定的时期来删除该时期内所创建的数据。 • 全部: 查看全部文件。 • 1周前: 查看创建后1周内的文件。 • 1个月前: 查看创建后1个月内的文件。 • 6个月前: 查看创建后6个月内的文件。 • 1年前: 查看创建后1年内的文件。
原始数据	由于原始数据不占用云存储的空间, 因而其不会出现在饼状图中。但您可以根据需要在此处管理原始数据, 如将其删除以保护患者的隐私信息。
结果文件 & 附件	结果文件及附件将占用云存储空间。如云存储空间已满, 那么您可以通过清理多余文件来释放更多的空间容量。
删除	可通过清理在云存储空间中所选择的文件来释放空间容量。

订购

如您目前使用的是2 GB Plan或通过兑换码使用的10 TB Plan, 那么您均可以直接订购10 TB Plan。

付款将通过Stripe服务来完成 (www.stripe.com)。

1. 前往“会员” > “Medit Cloud Storage Plan” > “10 TB Plan”并点击“订购”按钮。

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. 查看10 TB Plan的说明并再次点击“订购”。

Subscribe Membership

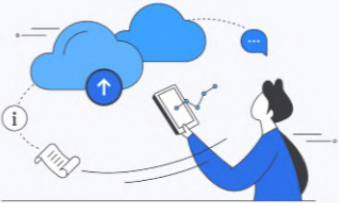

10 TB Plan


9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

[Cancel](#) [Subscribe](#)

3. 了解价格及相关条件并输入付款所需的信息。随后，点击“订购”。

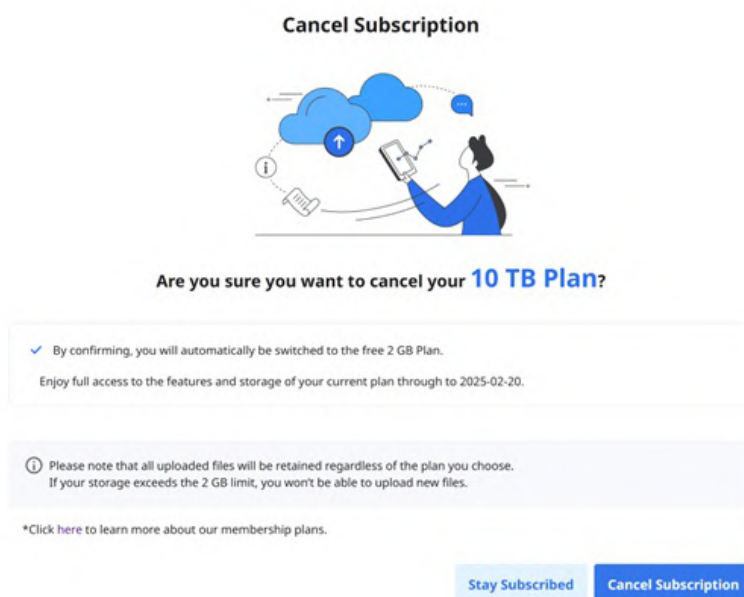

3. 为了予以确认, 请在弹出的窗口中再次点击“取消订购”。

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. 您的订购将被成功取消。

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription has been canceled.


You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB. If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. 从下一个付款日开始您的会员计划将随即变为2 GB Plan, 而云存储空间的限额也将变回2GB。如超过该限额, 则您便将无法对文件进行备份, 同时也不能使用“订购”及“共享”功能。

我的订购

您可以在“我的订购”中查看当前订购的详细信息、重新订购或取消订购。您还可以修改付款方式，其将从下一次预定付款时开始生效。

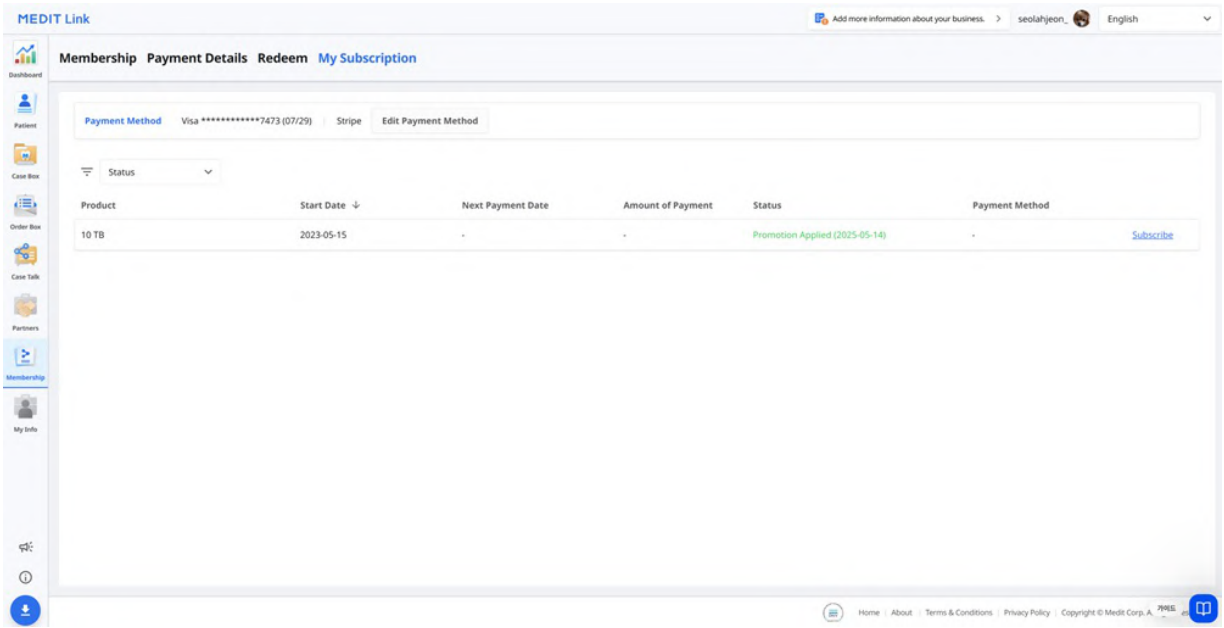

细节


条目	说明
产品	显示订购的类型。
开始日期	显示订购或促销开始的时间。
下次付款日期	显示下次付款日期。
付款金额	显示付款金额。
状态	订购 - 生效: 订购已生效。 - 即将过期: 订购将不会在下次付款日期时续订，并将被取消。 - 已过期: 订购的会员计划已结束。 促销 - 促销已应用: 促销码现已激活生效。 - 促销待定中: 促销码待激活。 - 促销已过期: 促销码已过期。
付款方式	显示付款所用银行卡的最后4位数字。

重新订购


条目	说明
云存储计划	点击订购按钮以重新订购10 TB Plan。
App订购计划	登录App以重新订购。

如何添加付款方式

1. 点击“编辑付款方式”。

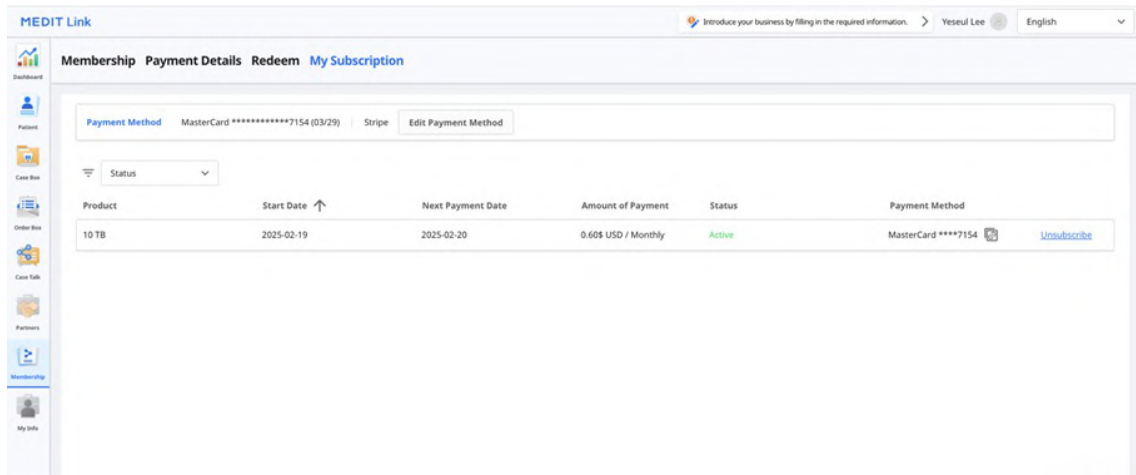

2. 点击“添加付款方式”。

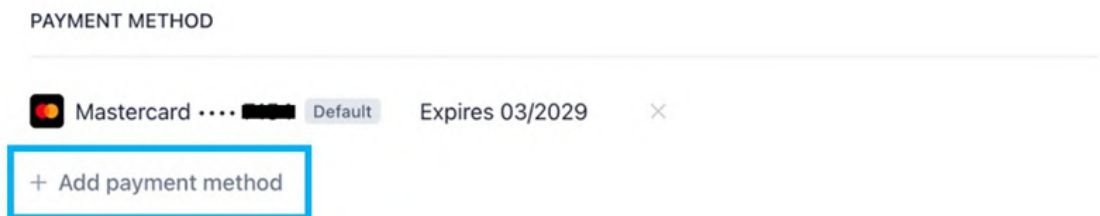

3. 输入所需的信息并点击“添加”。

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow MEDIT USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. 新添加的付款方式将被设为默认方式并在下一次付款时生效。

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

如何修改付款方式

1. 点击“账单”对话框窗口中点击您想修改的付款方式旁边的“扩展菜单”图标。

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

2. 点击“存为默认”来将所选择的银行卡设置为默认付款方式。

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS


 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

Make default
Delete

兑换

您可以兑换促销码以免费享用10 TB Plan。


细节

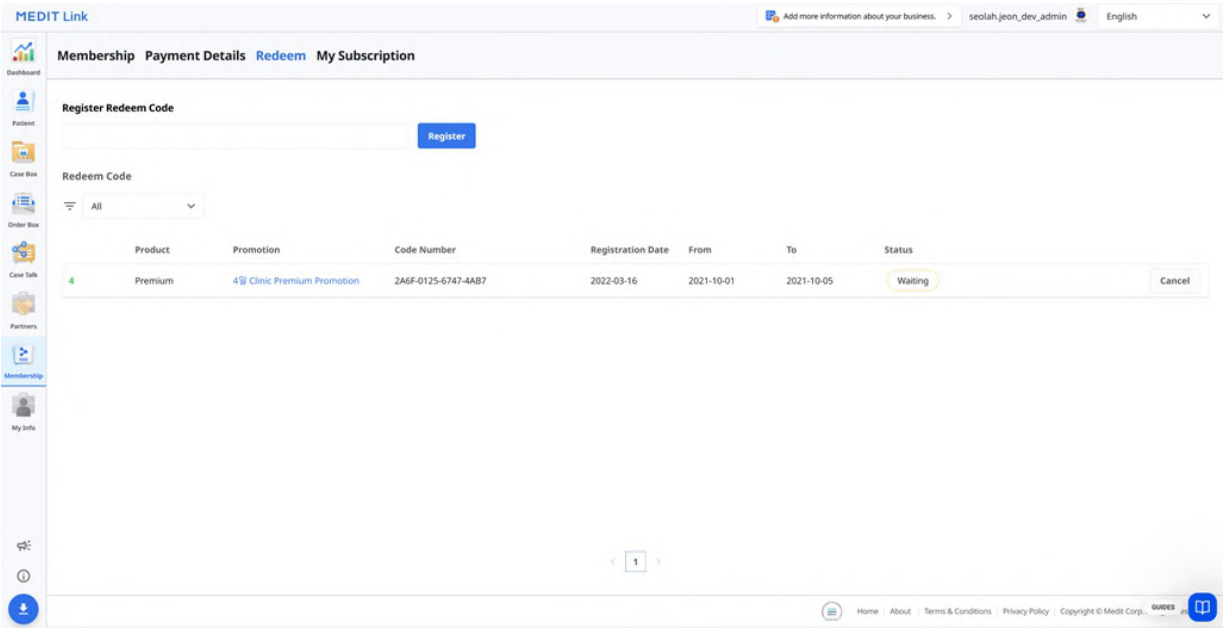

条目	说明
产品	显示促销所适用的相应计划。
促销	显示促销的名称。
代码	显示促销的相应代码。
注册日期	显示促销码注册的日期。
从	显示促销的开始日期。
至	显示促销的逾期日期。
状态	● 已注册: 促销码已被添加并可供使用。 ● 等待中: 促销码待激活。 ● 已激活: 促销码现已激活生效。 ● 已使用: 促销码已过期。

注册兑换码

1. 输入兑换码并点击“注册”。
2. 阅读通告并在弹出的对话框中点击“注册”或“应用”。
 - 注册: 表示可注册兑换码。您可以在注册后激活并使用兑换码。
 - 应用: 表示可注册并激活兑换码。促销折扣将立即生效。

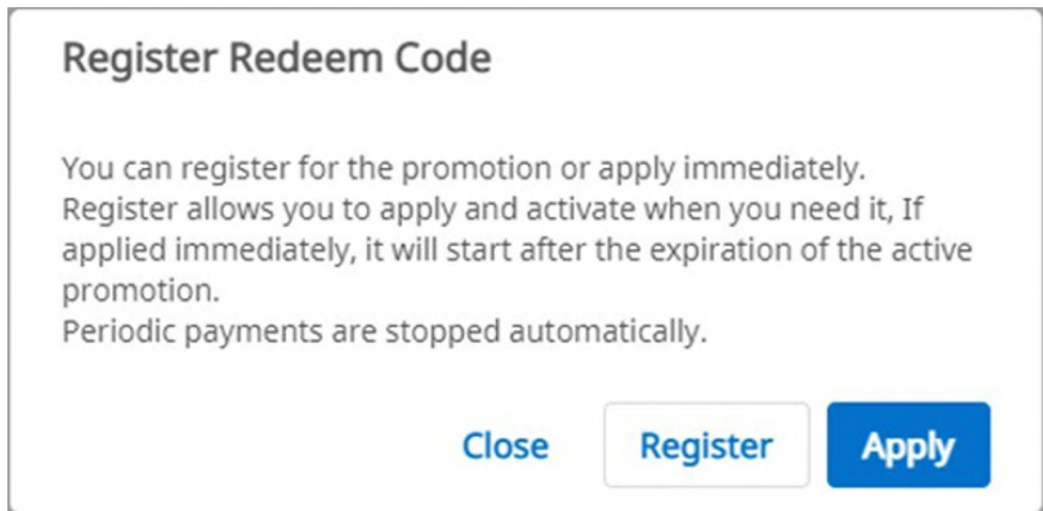

激活兑换码

尽管您可以注册多个兑换码，但您需激活您想使用的兑换码。


1. 点击您想使用的兑换码旁边的“激活”按钮。
 - 如当前没有处于“已激活”状态的兑换码，则您选择的兑换码将立即得到应用。
 - 如当前有一个已激活的兑换码，则新选择的兑换码的状态将变为“等待中”。而在当前已激活的兑换码过期时，处于“等待中”的新兑换码将自动得到激活。

注意

只能激活一个兑换码，且只有一个兑换码可处于“等待中”的状态。

付款详情


您可以在“付款详情”标签中查看您的订购及付款记录。

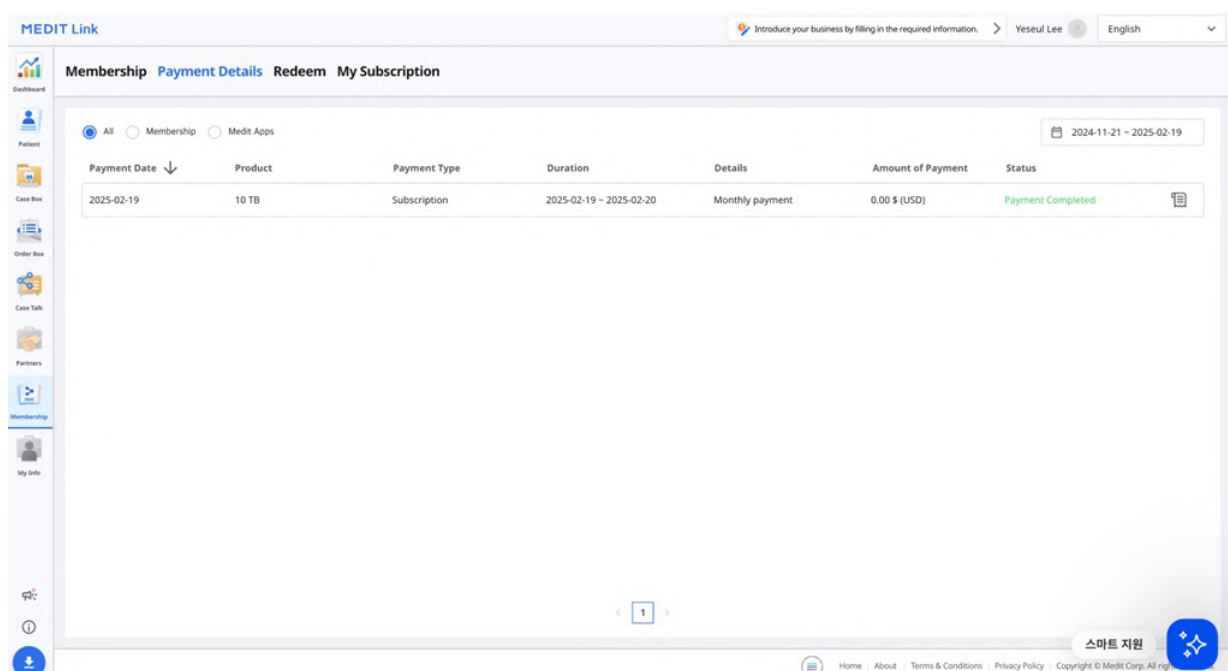


条目	说明
付款日期	显示付款的日期。
产品	显示购买的计划或App。
付款类型	显示付款的类型： • 订购 • 一次性支付
期限	显示订购的期限。
细节	显示详细的付款信息。
付款金额	显示订购或一次性购买的金额。
状态	• 付款已完成: 付款已处理完成。 • 付款失败: 付款处理失败。 • 付款未完成: 付款未处理完成。点击“立即付款”以继续。 • 待续费: 续订费用尚未支付。

查看账单详情

您可以点击右侧的收据图标来查看付款发票及收据。

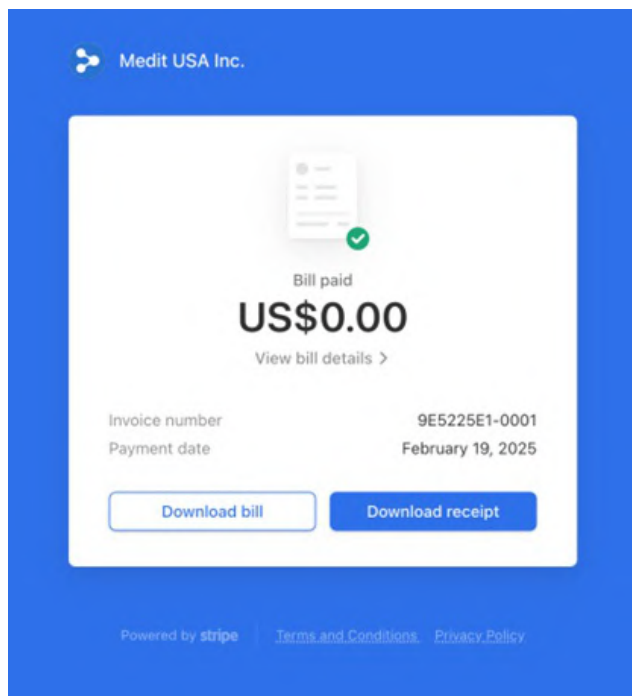

点击“查看账单详情”即可了解付款信息。

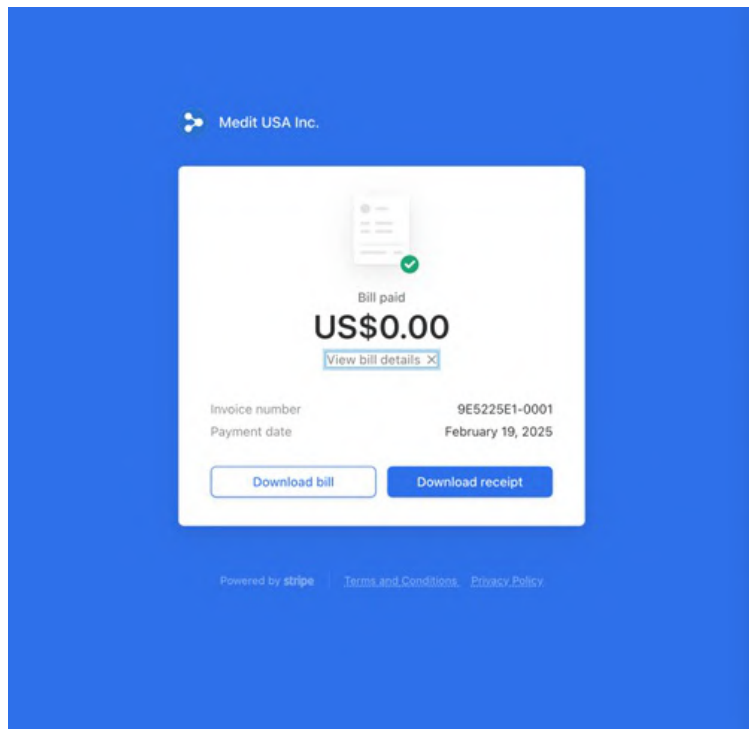

[X Close Bill Details](#)

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source Medit USA Inc.
bill #9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics US\$0.60
Quantity 1 piece

subtotal US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인) -US\$0.60

Payment amount US\$0.00

Amount paid US\$0.00

Remaining amount US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

我的信息

我的账号

在“我的信息”中，您可以查看并编辑注册时所提供的信息，并查看您的会员状态。

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account

My ClinicMy Scanner



Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English

Country/Region

Korea, Republic of

📘 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

我的诊所/我的实验室(仅管理员账户)

您可以核对并编辑您诊所或实验室的相关信息。该环节仅适用于管理员账户。

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic


My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

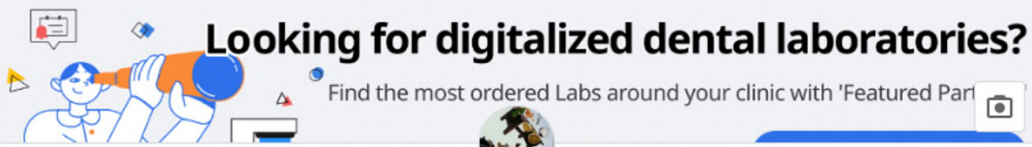

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'



1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

 Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

 Register up to 3 websites.

我的扫描仪

您可以查看账号的连接设备信息。

条目	说明
类型	显示模型名称。
序列号	显示设备的序列号。
使用时间	表示设备已使用的时间。
状态	显示设备的注册状态。 “已注册”表示扫描仪已成功连接并注册。 “未注册”表示扫描仪已取消注册。如扫描仪注册了不同的组，则其将失去其在当前组别中的注册。
上次连接日期	显示上次连接的日期。
上次校准日期	显示上次校准的日期。
保修期开始日期	显示保修期激活时的日期。
保修期截止日期	显示保修期过期时的日期。
剩余天数	显示保修期过期前的剩余天数。
购买	可让用户购买并延长保修期。
“删除”图标	可让用户把扫描仪从列表中删除。

其他菜单

公告&更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

相关网站

您可获取有关使用Medit Link的各种信息。还可访问Medit的教育及信息资源，如Medit Academy、Medit Academy YouTube及Medit帮助中心。

62

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

下载Medit Link App

您可以从网页端下载程序安装程序的最新版本。该菜单有助于在您丢失了产品包装中所提供的安装程序或您的安装程序过期的情况下使用。

 注意：


Medit Link可在您有网络连接的情况下自动进行更新。



Windows

macOS

概览

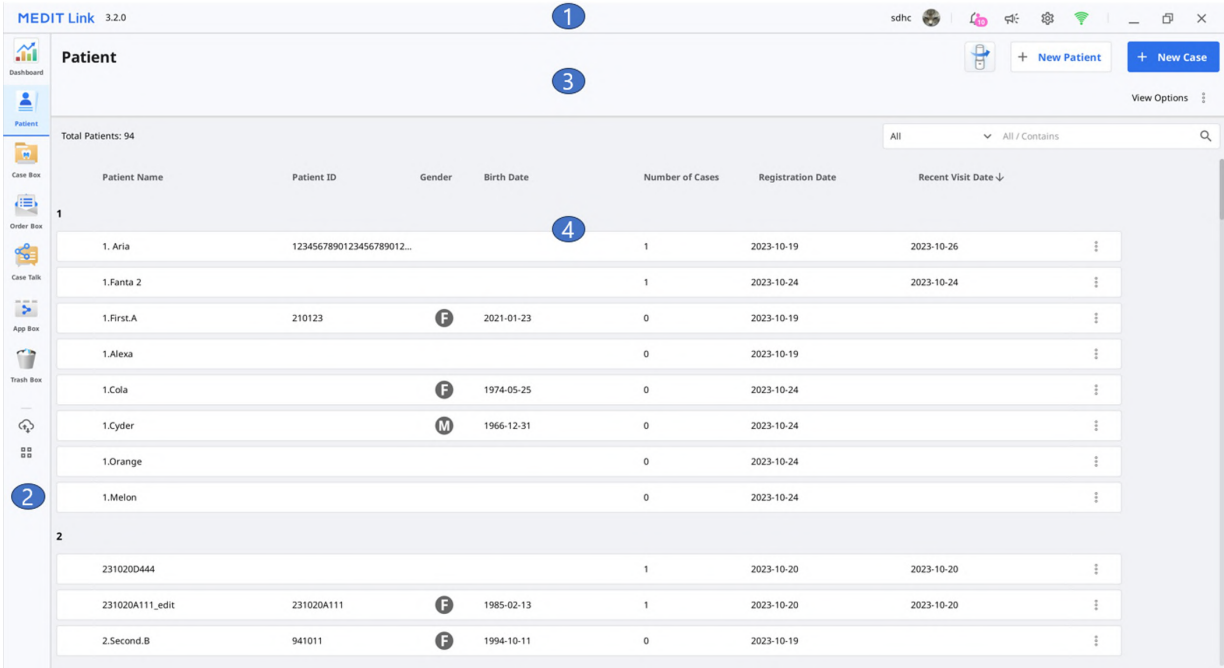

1	标题栏	前往“Medit Link App”>“标题栏”了解详细信息。
2	菜单	前往“Medit Link App”>“菜单”了解详细信息。
3	工具及功能	前往Medit Link App > “文件浏览器”及Medit Link App > “视图选项”了解详细信息。
4	病例列表	前往Medit Link App > “筛选及搜索”了解详细信息。

下表概述了每种类型的诊所及实验室账户类型可使用的菜单。

账户类型		患者	病例库	订单管理	收件箱	技工病例库	病例分享	垃圾箱	应用商店
诊所账户	管理员	O	O	O	X	X	O	O	O
	成员	O	O	O	X	X	O	* 仅“恢复”功能	O
实验室账户	管理员	X	X	X	O	O	O	O	O
	成员	X	X	X	O	O	O	* 仅“恢复”功能	O

标题栏

标题栏可让您快速访问诸如账户信息、通知、公告与更新、设置及网络状态等功能。



我的信息

我的信息包含像简介图片、诊所或实验室名称、电子邮箱地址以及用户名等基本的用户信息。

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

通知

您可以查看与合作关系、订单及作业流程相关的通知消息。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	勾选该处便可仅显示未阅读的信息。
2	点击任意通知即可立即前往相关的病例或网页。

通知及更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

设置

“设置”对话框可让用户配置程序。

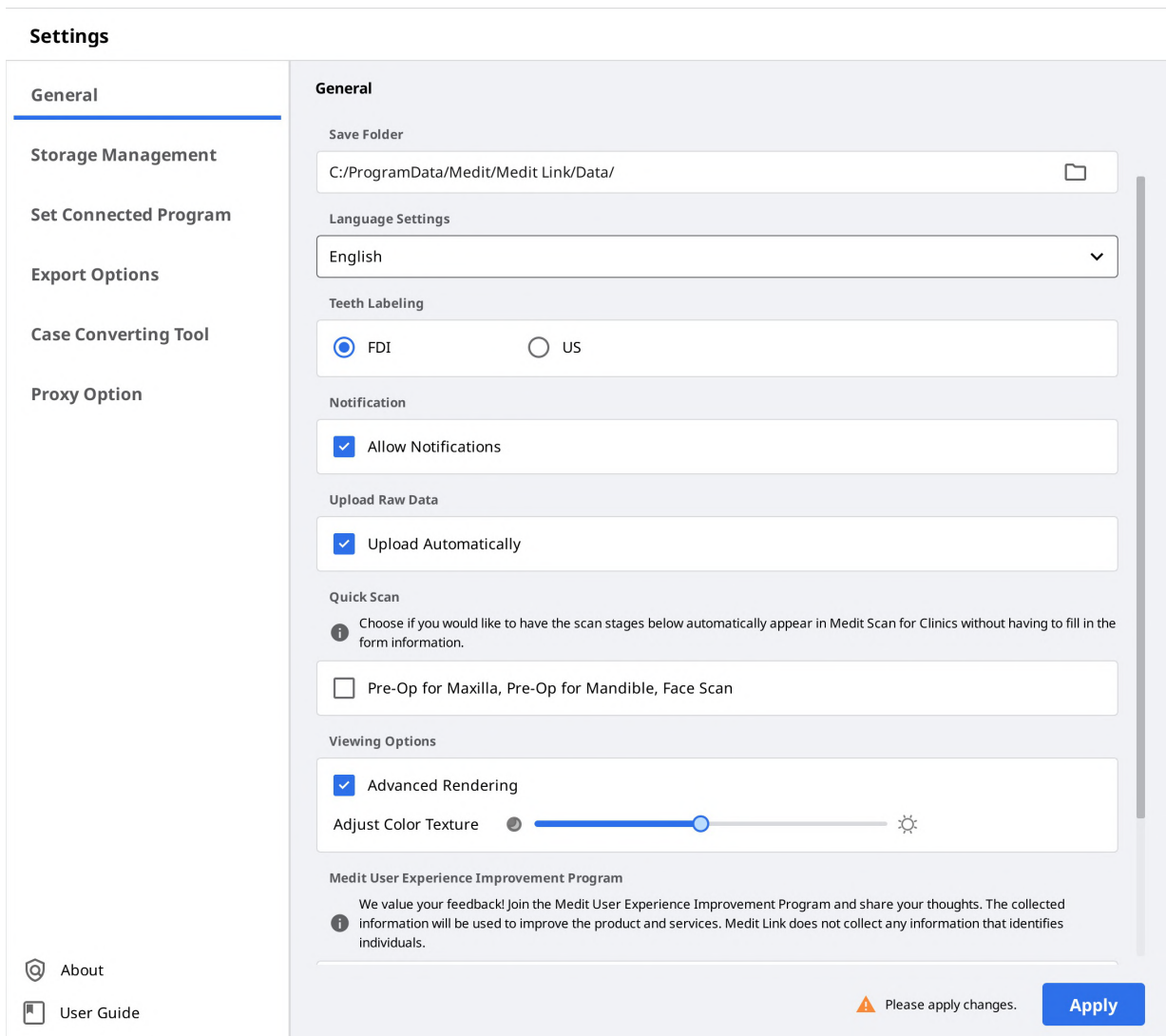

请前往“[Medit Link App](#)” > “[设置](#)”来了解设置选项的详细信息。

网络状态

Medit Link可使您在连接到网络时无缝使用所有功能。

为帮助您实时检查网络连接的状态，“网络状态”图标将显示在标题栏上。

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

如网络连接状态不良，则您可能会遭遇如下限制：

- 诸如“订购病例”、“创建病例”、通过“病例分享”共享及“云同步”等某些功能将受到限制。
- 由于网络环境的影响，服务的总体性能会出现下降。

在这种情况下，您可以先进入离线模式来进行某些基础操作。随后，在网络连接正常后，再使用其他需要网络的功能。

注意：

网络标识表示当前区域与亚马逊网络服务(AWS)之间的响应速度。其并不代表您的网速。也就是说，某些时候即使您的网速非常快，但其所显示的状态却可能是“不良”或“极差”。

如其它进程使用了同一个网络，那么网速也可能显示“欠佳”或“较差”并且Medit Link的总体性能也会变差。在这种情况下，请切勿与其他程序共用同一个网络。

例如，“上传原始数据”功能便往往要占据很大的网络进程。如此时标识显示网络状态“欠佳”或“较差”，那么请前往“设置” > “上传原始数据”并关闭“自动上传”选项。

设置

通用

可提供用来查看整体系统设置的选项。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Apply

Close

保存文件夹	可指定用来指定要存储在Medit Link及所连接的程序中所生成结果的文件夹。	
App安装文件夹	可为应用商店中的Medit App以及合作伙伴App指定安装路径。	
语言设置	可选择程序要使用的语言。	
牙齿标记	可在FDI与US之间选择牙齿标记系统。	
通知	在勾选该选项时，您便可接收有关程序更新的相关通知。	
上传原始数据	当您勾选该选项时，原始数据将被自动上传至云端。 该选项有助于您在另一台电脑上通过相同的账户使用Medit Link时备份原始数据并进行无缝式的扫描。 原始数据的云备份仅适用于在Medit Scan for Clinics中所获取的数据。	
快速扫描	可选择您是否想让下方的扫描步骤在不必填写表格信息的情况下自动显示在Medit Scan for Clinics中。 • 上颌术前模型 • 下颌术前模型 • 面部扫描	
视图选项	高级渲染	在勾选该选项时，程序将以更加生动逼真的渲染效果来显示3D模型。
	调整颜色纹理	可调整3D模型的亮度。 * 当您通过其他软件打开相同的数据时，其结果的颜色可能会与Medit Link中的颜色有些许出入。
Medit用户体验提升计划	可加入“Medit用户体验提升计划”。 • 我们收集信息的目的在于对我们产品及服务进行不断的提升及改进。 • 我们绝不会收集任何涉及个人身份的信息。	
登录后的默认页面	可选择在启动程序时显示的默认菜单。 • 诊所账户可在“患者”与“病例库”之间进行选择。 • 实验室账户可在“收件箱”与“技工病例库”之间进行选择。	

存储管理

可查看并管理本地及云存储空间。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Storage Management

Set Period

1/1/2018-11/13/2023

✓ All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Months Ago

1 Year Ago

Local PC Storage

Total Selected 0.00 KB

Delete

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

26.89 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

2.54 GB

Others

It shows space used by other programs.

666.76 GB

Cloud Storage

Total Selected 0.00 KB

Delete

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs. Raw data are not counted in cloud storage.

837.95 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

36.53 GB

Close

设置时期

可设置特定的时期来删除该时期内所创建的数据。

- 全部: 查看全部文件。
- 1周前: 查看创建后1周内的文件。
- 1个月前: 查看创建后1个月内的文件。
- 6个月前: 查看创建后6个月内的文件。
- 1年前: 查看创建后1年内的文件。

本地存储

可管理电脑端的存储空间。

原始数据	可从电脑端删除所选择的原始数据。 如原始数据已被上传至云端, 那么您便可以随时下载并使用。
结果文件&附件	可从电脑端删除结果文件及附件, 如网格、图片及视频。 如这些文件已被上传至云端, 那么您便可以随时下载并使用。
其他	可查看用来运行系统及其他程序的文件。还可显示您电脑端的存储空间。您无法直接从Medit Link中删除这些文件。
删除	可从电脑端删除所选择的文件。

云存储

可管理云存储空间。

原始数据	由于原始数据不占用云存储的空间, 因而其不会出现在饼状图中。但是您可以根据需要在这里管理原始数据, 如将其删除以保护患者的隐私信息等。
结果文件&附件	结果文件及附件将占用云存储空间。如云存储空间已满, 那么您可以通过清理多余文件来释放更多的空间容量。
购买存储空间	如您现在使用的是2 GB Plan, 那么您可以通过订购10 TB Plan来增加您的云存储空间。
删除	可通过清理在云存储空间中所选择的文件来释放存储空间。

设置连接程序

可管理支持在Medit Link中集成的程序。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒Medit Scan for Clinics

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

您可以连接如下程序：

	诊所账号	实验室账号
扫描程序	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

注意

下列服务的集成不可用于macOS端的Medit Link中。

Medit Scan for Labs

导出选项

可设置从Medit Link导出文件的方式。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

Dr:/HGam_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒meditMesh

☐OBJ

☐PLY

☐STL

☐Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐JPG

☒JPEG

☐PNG

☐BMP

Compress & Combine

☒Compress Files

☒Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒Always ask when exporting

☐Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

类型	可选择您想用于设计的CAD程序。 程序将基于您的选择来调整结果, 进而使您在无需对齐坐标轴的情况下进行设计。
文件导出路径	可指定您想要存储结果的路径。
网格格式	可指定最终网格文件的格式。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩&合并	压缩文件: 可将所有结果压缩到一份文件中。 合并单个网格: 可将上颌或下颌的结果合并到一份文件中。当使用某些不能导入及操作多份文件的程序时, 您可以将其合并为一份文件以便在这些程序上进行操作。
相同文件夹或文件已存在时的选项	可在目标路径中存在相同的文件夹或文件名称时选择病例的默认操作。 • 导出时始终询问。 • 导出新文件并覆盖现有文件。当前存储的文件将被丢弃。 • 创建一个文件夹并导出文件
文件夹名称规则	可在导出文件时创建文件夹名称的规则。 设置的规则将被应用到文件夹命名中, 导出的文件将被保存在所创建的文件夹中。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者编号、订单编号 • 实验室账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单编号
文件名称规则	可定义导出文件的名称规则。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者编号、订单编号 • 实验室账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单编号

病例转换工具


您可以通过导出账户的现有病例或导入从其他账户导出的病例来在不同的账户间移动病例。

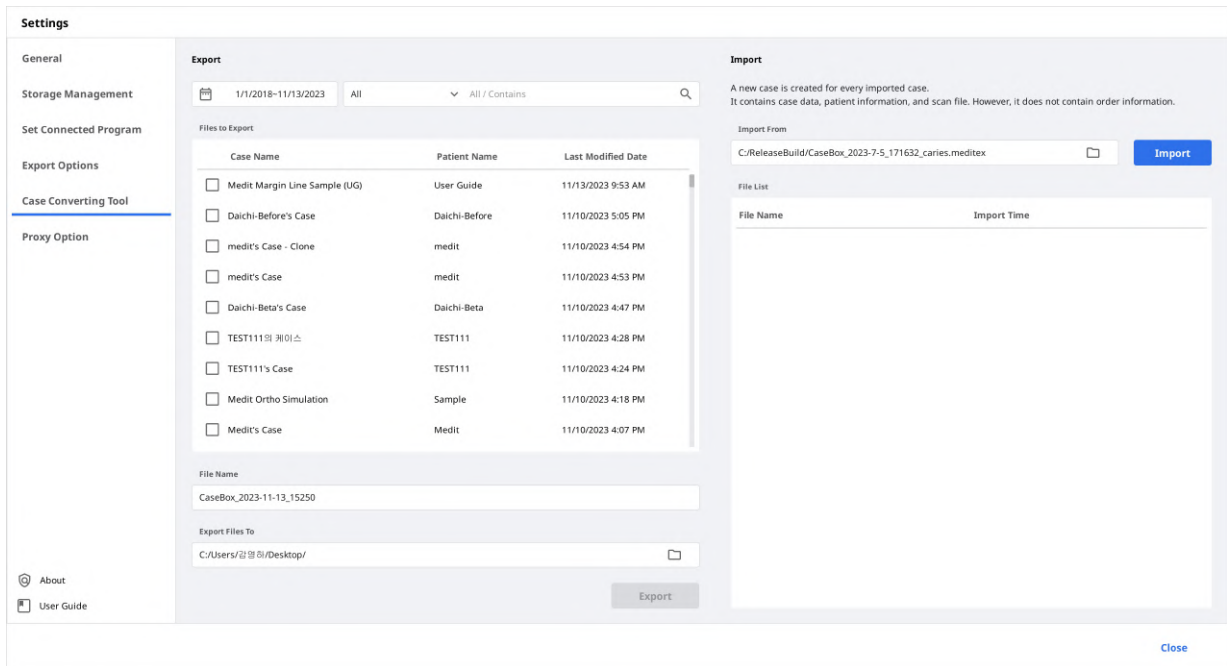


导出病例

可将当前登录账户中的病例导出至本地电脑端。


1. 打开Medit Link并点击“设置”图标。

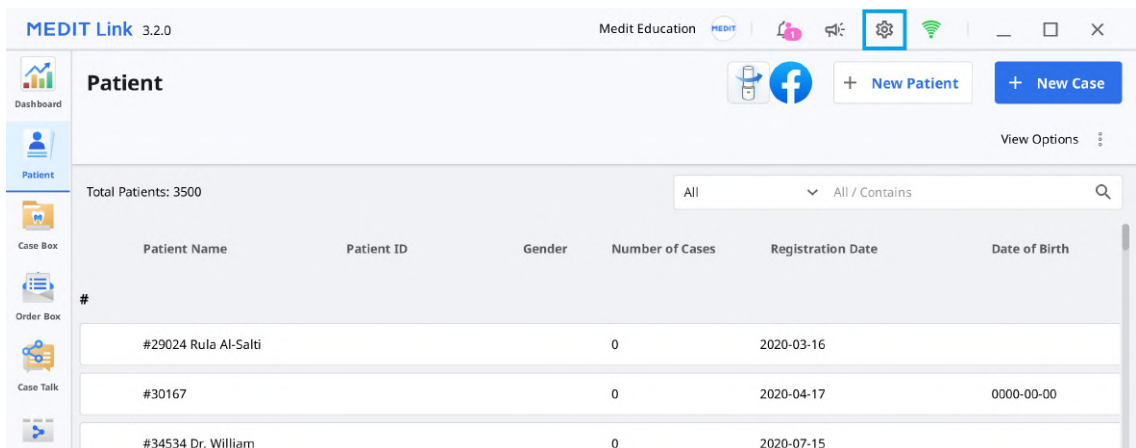


2. 选择菜单左侧的“病例转换工具”区域。

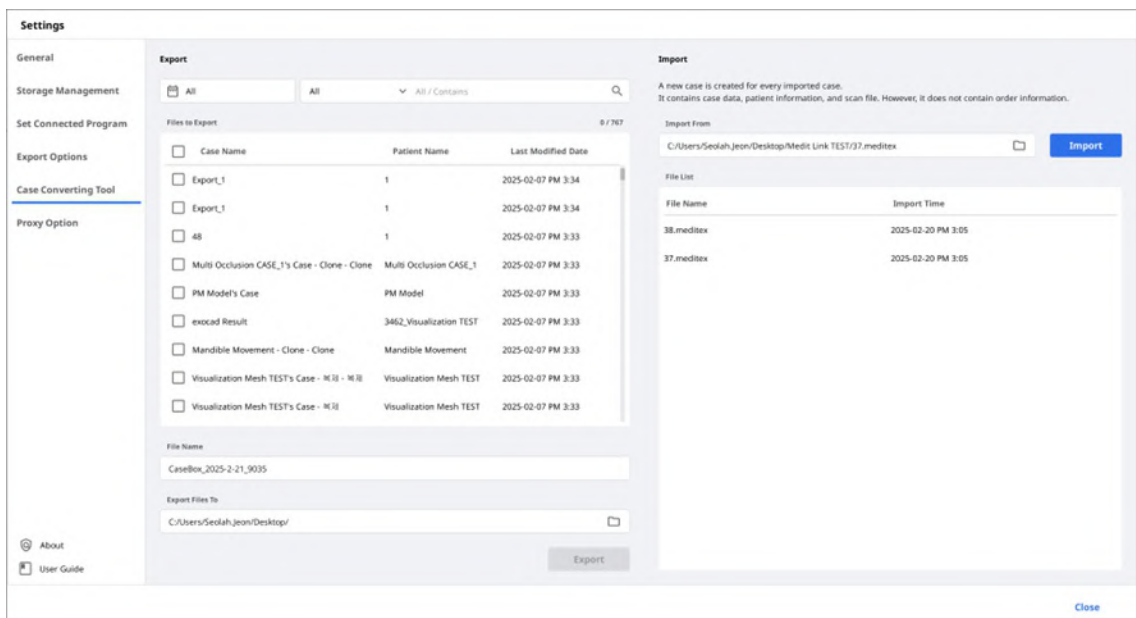

3. 在“导出”环节, 可根据需要设置期限或搜索要导出的病例。

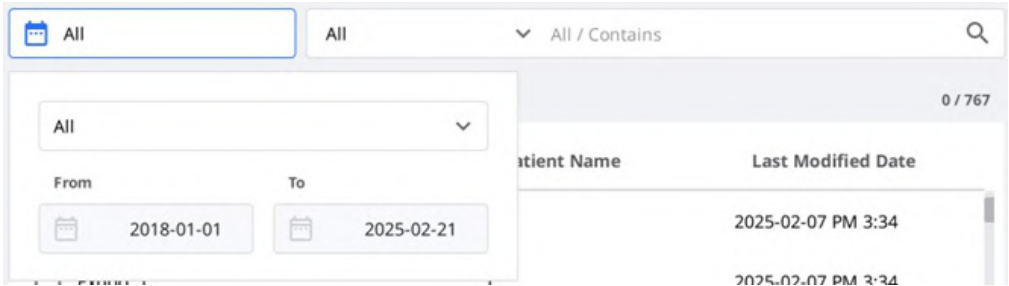

4. 从“要导出的文件”中的列表选择您要导出的病例。

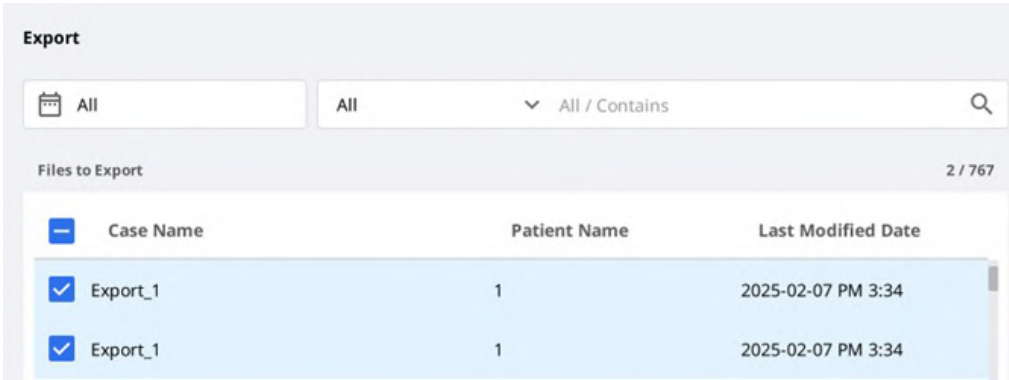

5. 通过在“文件名”字段中编辑病例名称来设置文件名。

6. 设置要导出所选病例的目标文件夹。

7. 点击“导出”。

8. 点击“是”即可打开导出文件的文件夹。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. 导出的病例将保存为.meditex文件格式。

导入病例


1. 打开Medit Link并点击“设置”图标。

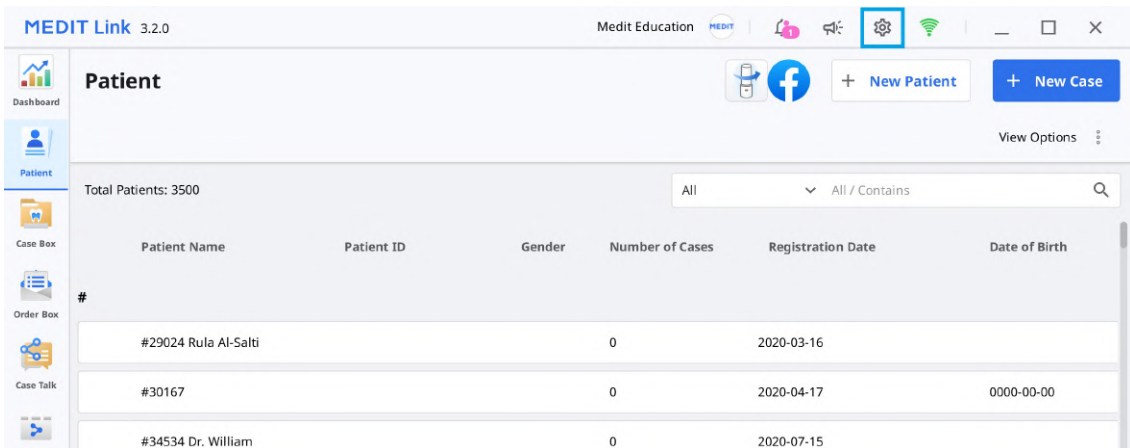

2. 选择菜单左侧的“病例转换工具”区域。

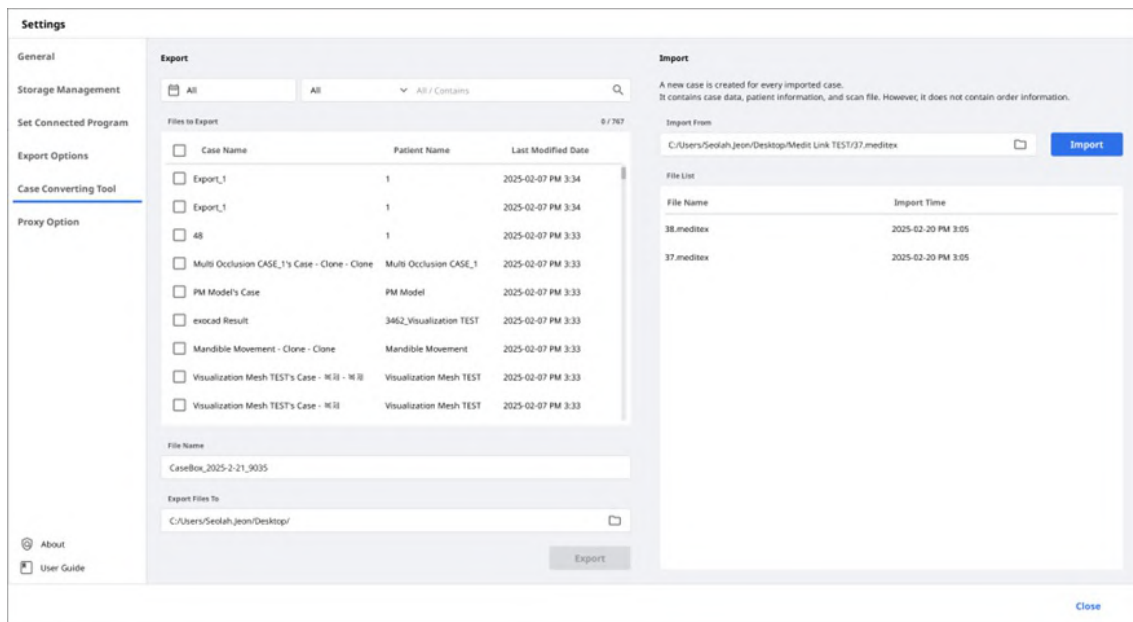

3. 在“导入”环节中，点击文件夹图标来浏览您想导入.meditex文件的个人电脑端。

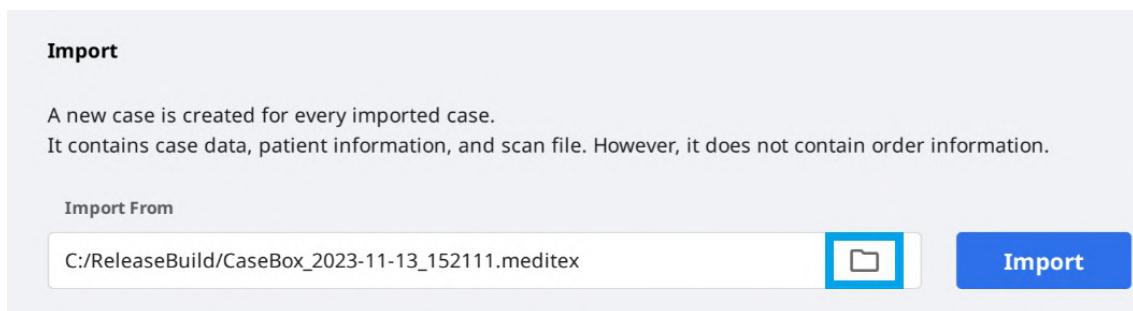

4. 点击“导入”图标并在下方的列表中查看要导入的文件。

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. 所导入的病例也将出现在您的病例库(诊所账户)或技工病例库(实验室账户)中。

代理选项

在某些网络受限的环境中，您可以更改网络设置。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

产品信息

可显示有关Medit Link的详细信息。

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

《用户指南》


可获取Medit Link的《用户指南》。

须连接网络才可打开《用户指南》。

菜单

控制面板

您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

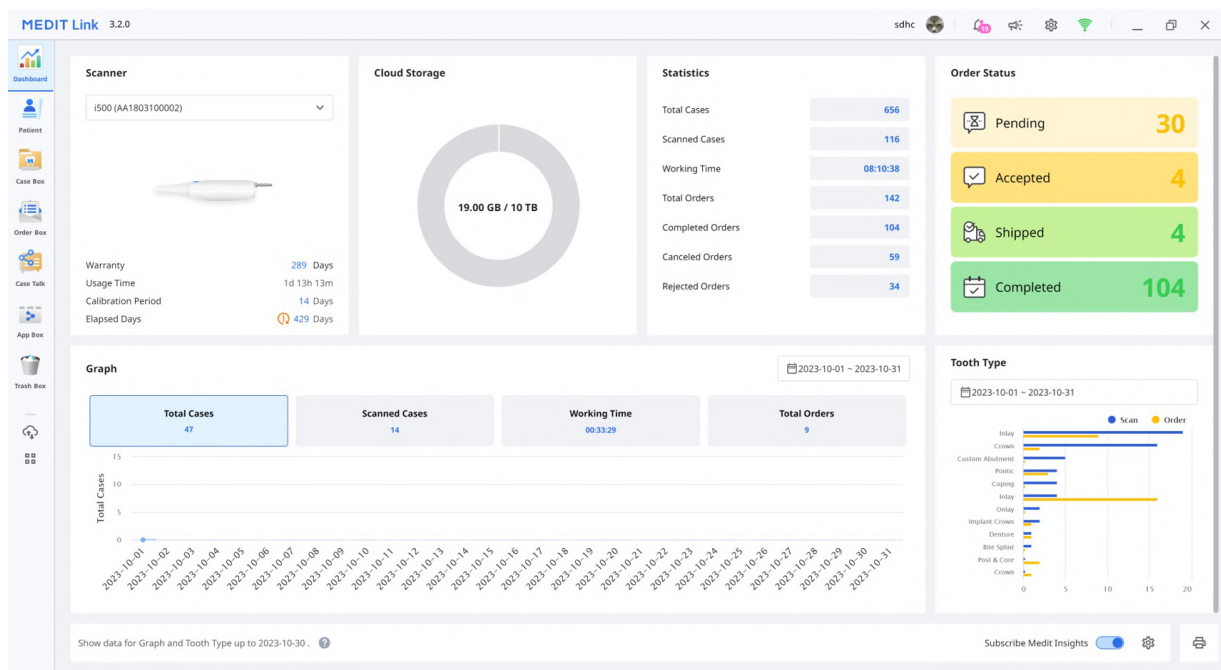


注意

请前往[Medit Link网页端 > 控制面板](#)来了解有关控制面板及Medit Insights的更多信息。

患者


您可以在“患者”菜单中添加、编辑、删除或合并患者。

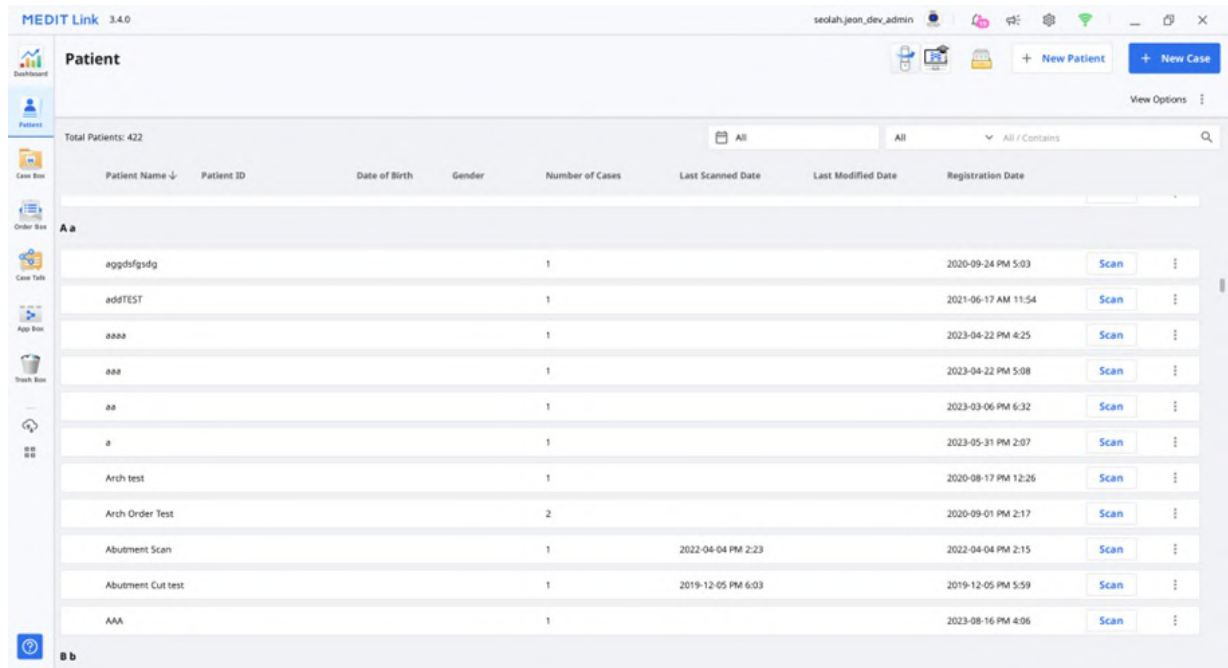

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggdsfgsdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

添加新患者

1. 点击“新患者”。

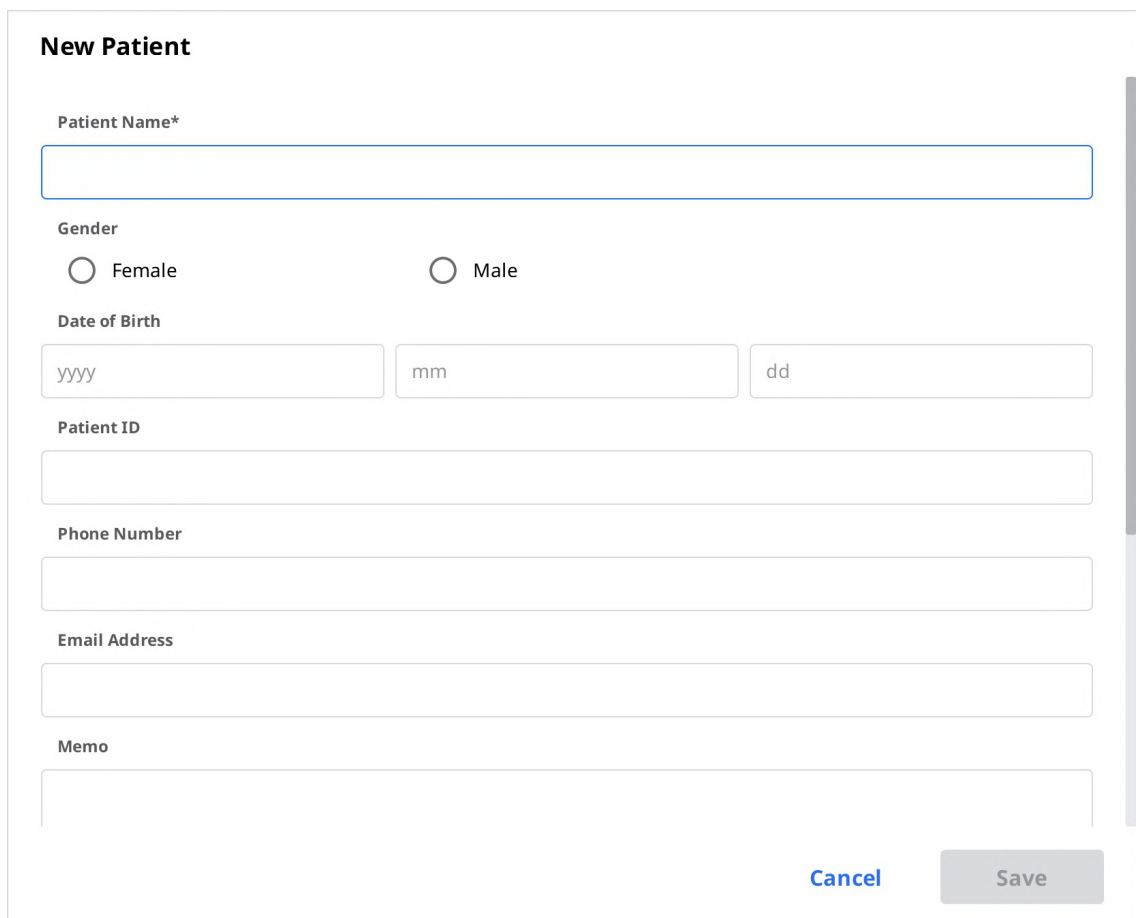

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. 在“新患者”对话框中输入所需的信息，然后点击“保存”。

删除患者

注意

仅可在患者没有病例的情况下才可删除该患者。

1. 从列表中选择您要删除的患者。

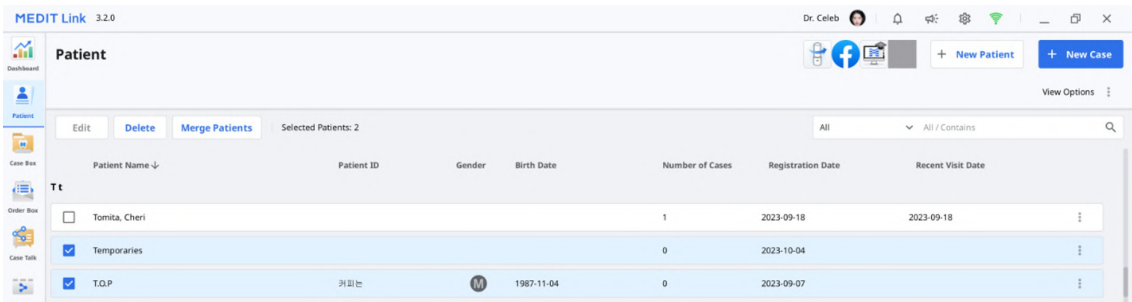


2. 点击“删除”。

合并患者

您可将多位患者的所有病例合并到一位病人名下。

1. 从列表中选择您想合并的患者。

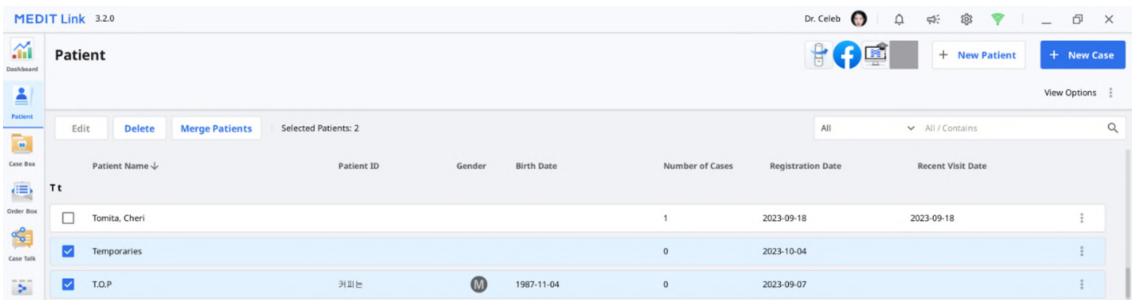

2. 点击“合并患者”。
3. 选择您想将所有病例合并到其名下的目标患者。
4. 所有病例均将被合并到目标患者中，目标患者的患者信息将保持不变。

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#) [Apply](#)

5. 点击“应用”即可进行合并。

病例库/技工病例库

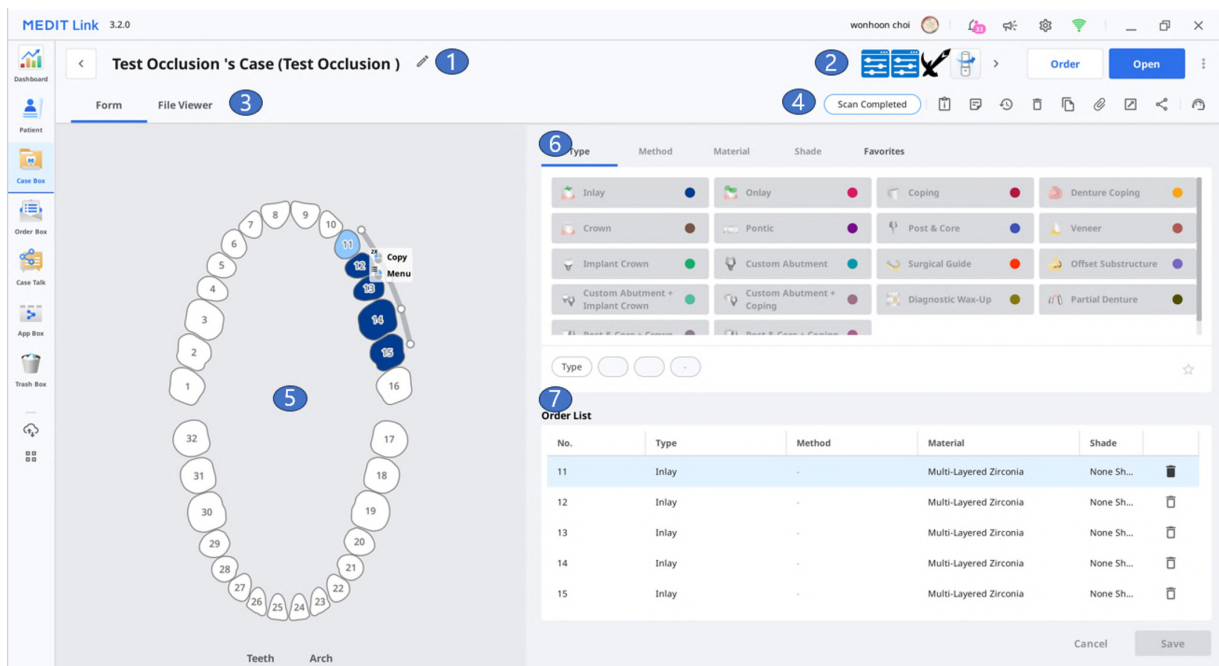

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供可用的关键功能：“扫描”或“打开”按钮、“订购”按钮、App图标。
3	提供可用的标签：表格、文件浏览器。
4	显示管理病例及文件的功能。
5	显示所选扫描程序的表格注册用户界面（UI）。
6	提供类型/方法/材料/牙色信息以供用户为其所选的牙齿编号进行选择。
7	显示应用于所选牙齿的类型/方法/材料/牙色信息。

病例库/技工病例库中的标签


表格	文件浏览器
表格标签可在您为扫描作业输入像类型、方法、材料及扫描选项等基本信息时提供相应的用户界面。您所输入的信息将被传送至扫描程序中并可在与您的合作伙伴下订单时用作订单信息。	可查看通过扫描程序及CAD所生成的结果文件。文件浏览器可有效地显示及管理经获取或附加的3D模型及2D图片。

病例库/技工病例库中的功能

病例库/技工病例库中提供下列功能。

	病例状态	可显示病例的状态。								
	转至订单管理/收件箱	可在另一个工具箱中为同一病例提供快捷方式(病例库 ↔ 订单管理; 收件箱 ↔ 技工病例库)。								
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。								
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。								
	病例历史	可提供有关病例历史的详细信息。 History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	删除	可删除病例。 您无法删除已订购的病例或在离线时所创建的病例。								
	复制	可在病例库中为当前的病例创建一个复制体。所有数据均将被复制到经复制的病例中。 该功能有助于为同一位患者复制治疗信息或使用相同的信息或文件来进行追加订购。								
	附加	可附加各种格式的文件。								
	导出	可将扫描或CAD结果文件导出到本地电脑端中。您可以在导出文件时选择您喜欢的文件格式。 经导出的文件可用在CAD及CAM软件中以便进行后续的作业。								
	共享	可创建用于共享的链接。 拥有共享连接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如Chrome、Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。 您可以随意与任何人共享连接或仅与特定的人共享链接。您还可以设置逾期日期的PIN码或链接来确保私人信息的安全。								
	提交支持请求	可转至Medit的“帮助中心”页面来提交支持请求。								

订单管理/收件箱

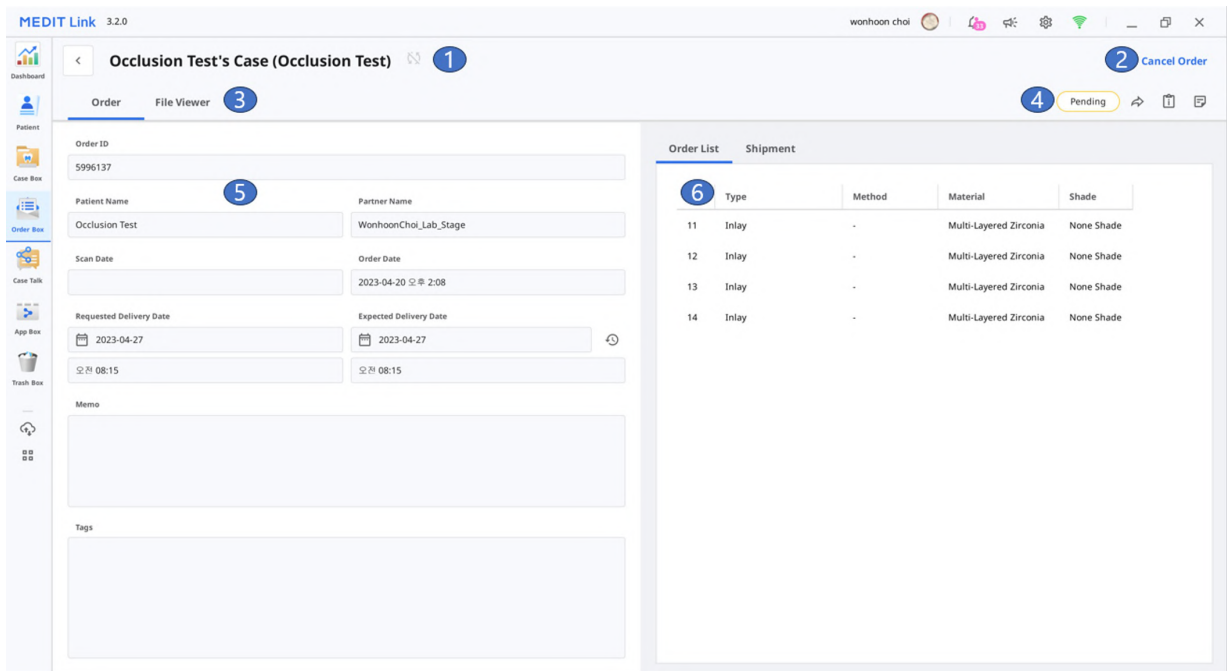

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供进行订单管理的相关功能(接受/取消;交货/收货)。
3	显示可供使用的标签:订单及文件浏览器。
4	可显示管理病例及文件的共享:病例状态、详情的快捷键、病例信息、备忘录&标签等
5	显示包括订单号、患者姓名、合作伙伴姓名、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录&标签等订单的详细信息。
6	可显示订购产品的信息及发货状态。

订单管理/收件箱中的标签

订单	文件浏览器
可查看诸如订单号、患者姓名、账号名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录及标签等与订单有关的详细信息。	可查看扫描/CAD操作所生成的文件。文件浏览器可显示并管理程序所获取或附加的3D模型及2D图片。


病例分享

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册成员所共享。

用户可以在Medit Link App及Medit Link网页端中通过“病例分享”来查看所有共享病例的列表。

注意


“病例分享”服务需在联网的情况下才可使用。

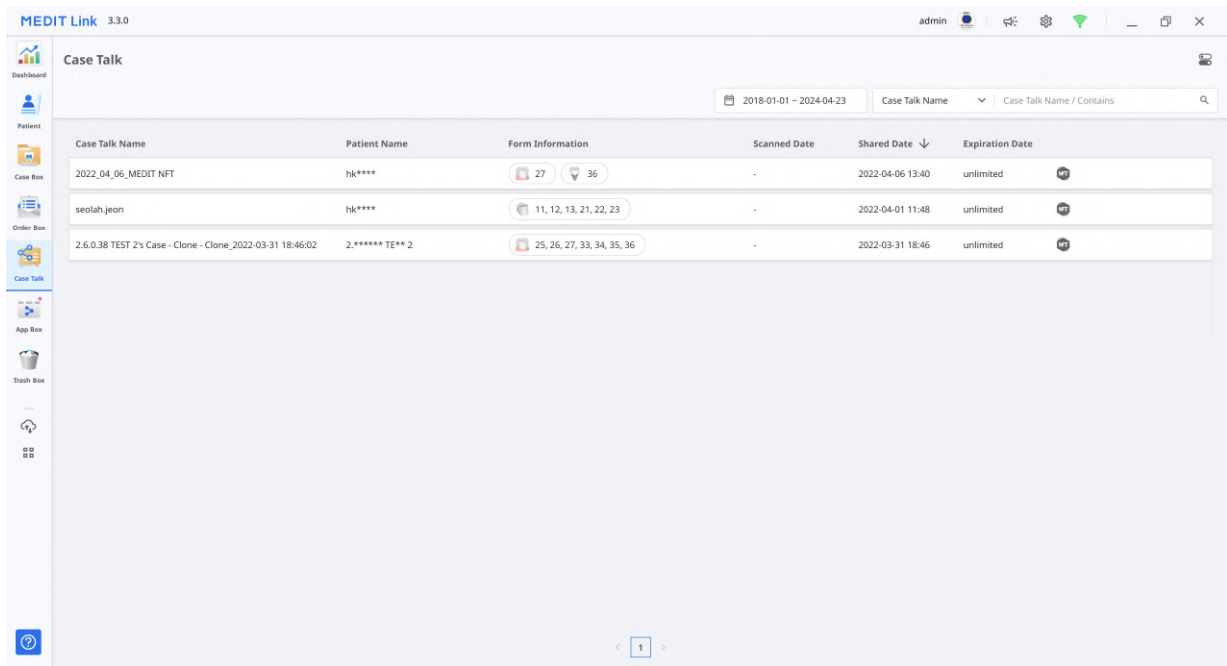

用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。

应用商店

应用商店可提供能为您的基础扫描作业流程予以补充并提升作业效率的各式附加程序。您可以下载并安装所提供的App来创建牙科器具、分析扫描数据、协助您进行咨询问诊或提升您作业流程的效率。

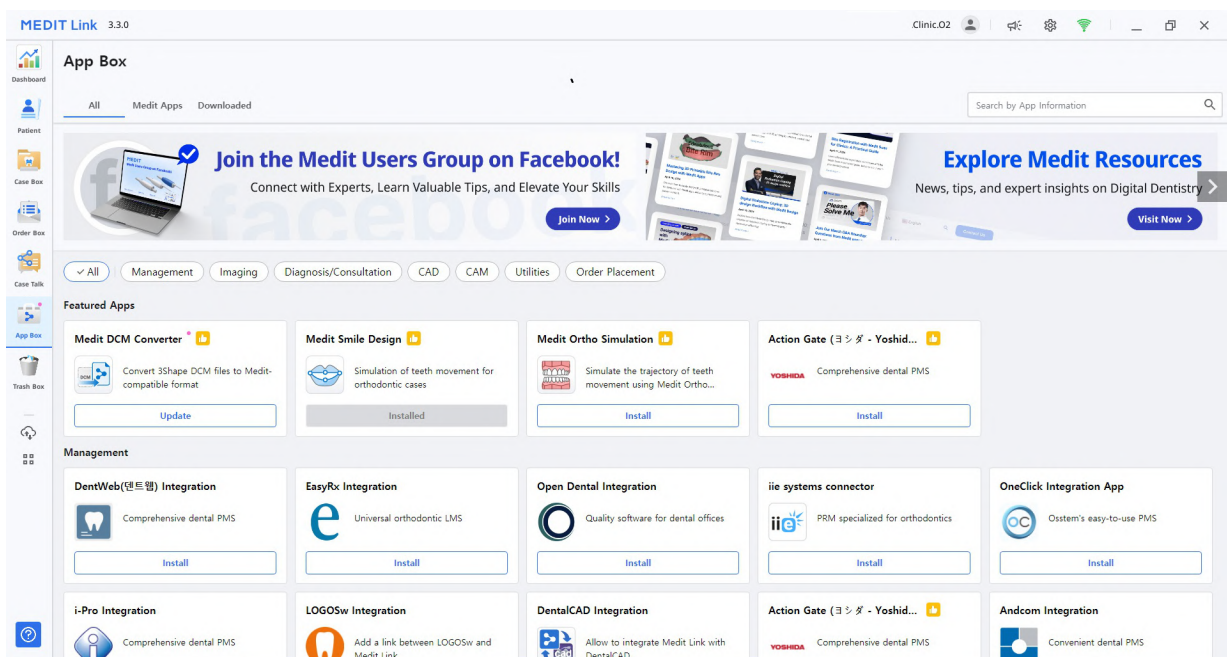

全部


“全部”标签可显示其提供的所有App的列表，包括Medit开发的原创软件（Medit Apps）以及“合作伙伴App”——Medit与来自数字化牙科不同领域的合作伙伴整合的App，如3D打印、CAD/CAM软件等等。

Medit Apps

“Medit Apps”标签仅显示Medit所研发的原创App的列表。

已下载

“已下载”标签可显示当前已安装在您电脑端的App以及用户账号有下载记录的App列表。

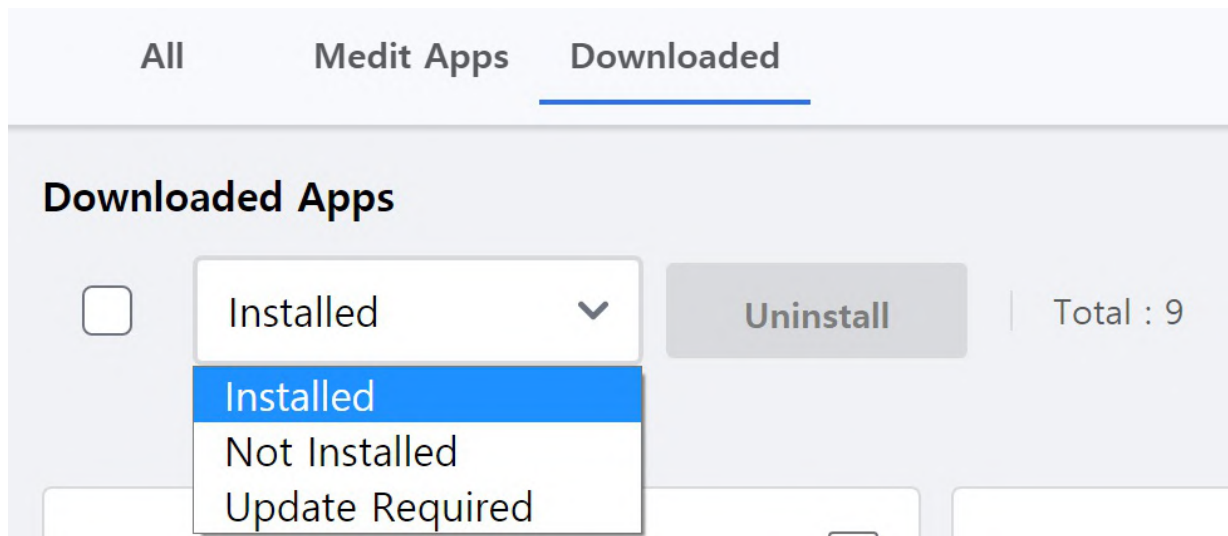

- **已安装**: 该选项仅显示用户当前登录的电脑上所安装的App。
- **未安装**: 该选项可让你查看已安装在其他电脑上的App, 以便您进行快速安装。
- **需更新**: 该选项仅显示当前电脑上所安装的需要进行更新的App。

垃圾箱

垃圾箱可临时存储您所删除的病例。垃圾箱的任何病例均可被恢复或永久性删除。



从垃圾箱中所删除的数据将被从电脑及服务器中永久删除且无法得到恢复。

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_외출판트 46, 47's Case - Clone - Clone	외출판트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

病例同步管理器

“病例同步管理器”可帮助您高效地上传及下载病例。您可将多份病例上传至云端或将其下载至您的本地电脑端。如想识别需要同步的病例，只需对其进行搜索或应用日期筛选项即可。

Case Synchronization Manager

UploadDownload

All

Case NameCase Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data TypeAll

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

上传

 Upload	上传所选病例。
 Cancel	取消上传所选病例。
 Retry	在上传失败时重新上传病例。

下载


 Download	下载所选病例。
 Cancel	取消下载所选病例。
 Retry	在下载失败时重新下载病例。

相关网站

您可以直接前往包括“我的信息”、“合作伙伴”及“会员”在内仅适用于Medit Link网页端的菜单。请前往Medit Link > Medit Link网页端 > [合作伙伴](#)、[会员](#)及[我的信息](#)来了解Medit Link网页端中菜单的详细说明。

您可以访问Medit的网上商城——Medit Shop——以购买扫描仪的延保服务以及诸如扫描仪背包等其他Medit的商品。

此外，您还可获取有关使用Medit Link的各种信息。访问Medit的教育及信息资源，如Medit帮助中心、Medit Academy YouTube频道及Medit Academy在线教育平台。

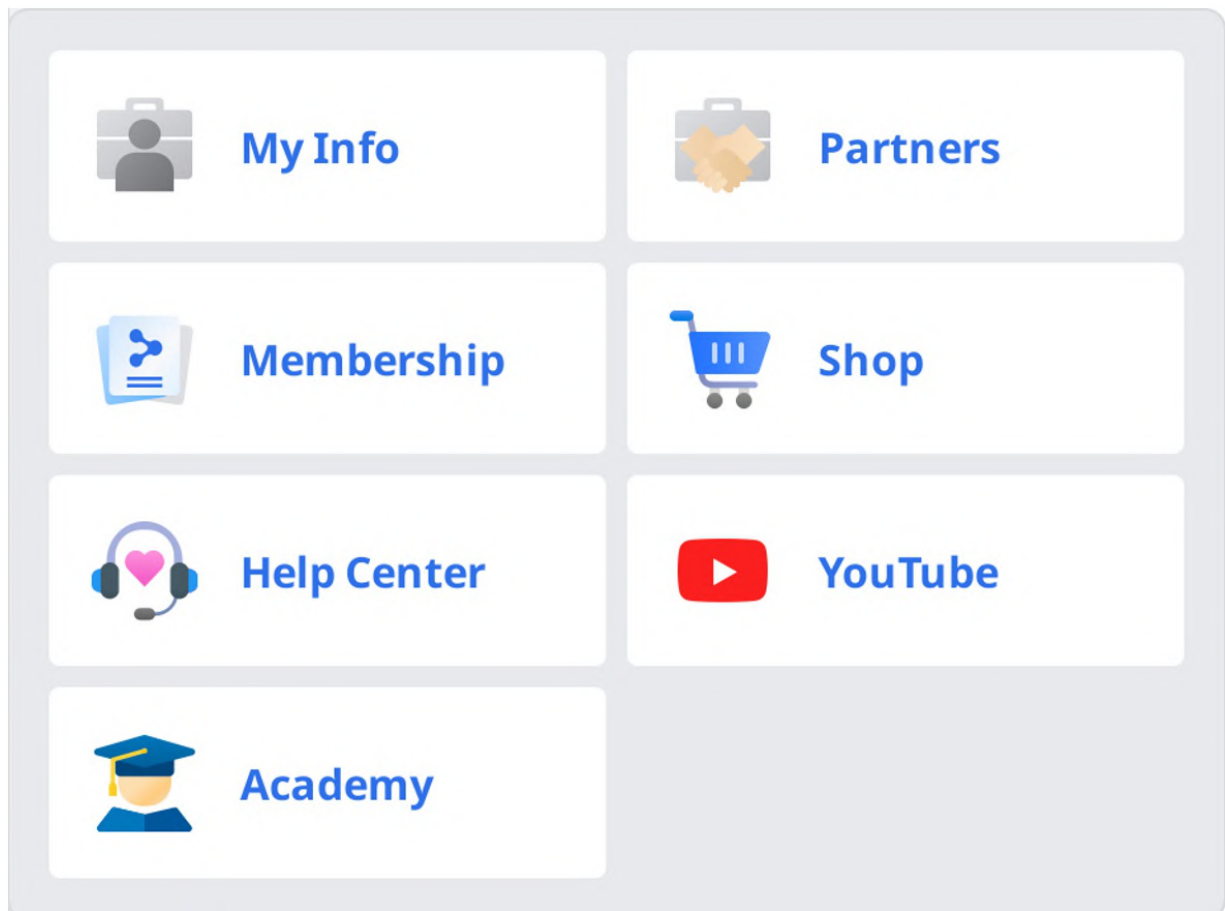

文件浏览器

文件浏览器可分组并显示各种数据，包括从与Medit Link相关联的程序处所获取的数据以及用户附加的数据。




其可提供基本的管理功能，如显示/隐藏数据、调整不透明度及删除数据。

还可预览以下格式的文件：

- 3D数据:STL、OBJ、PLY
- 2D图片:PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 视频文件:MKV、MP4、AVI、WMV

数据树

您可在数据树中分组并显示病例的所有数据。还可从数据树显示/隐藏数据、调整透明度及删除数据。

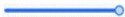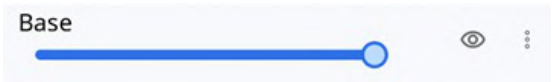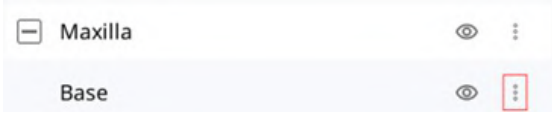
	显示/隐藏	可显示或隐藏相应的数据。
	不透明度	当您点击数据树上的某个数据时，滑杆条便将自动出现。您可通过移动滑杆条来调整所显示数据的不透明度。 
	更多	点击“更多”图标即可显示其它可用的功能。  • 仅显示此:隐藏所有其它数据而仅显示相应的数据。 • 隐藏:隐藏数据。 • 复制:复制数据并将其添加至“附件组”中。 • 导出:导出所选择的文件。 • 重命名:修改数据的名称。 • 删除:删除数据。



注意

您可在“在线状态”时对数据进行重命名。

模型控制工具

3D模型控制

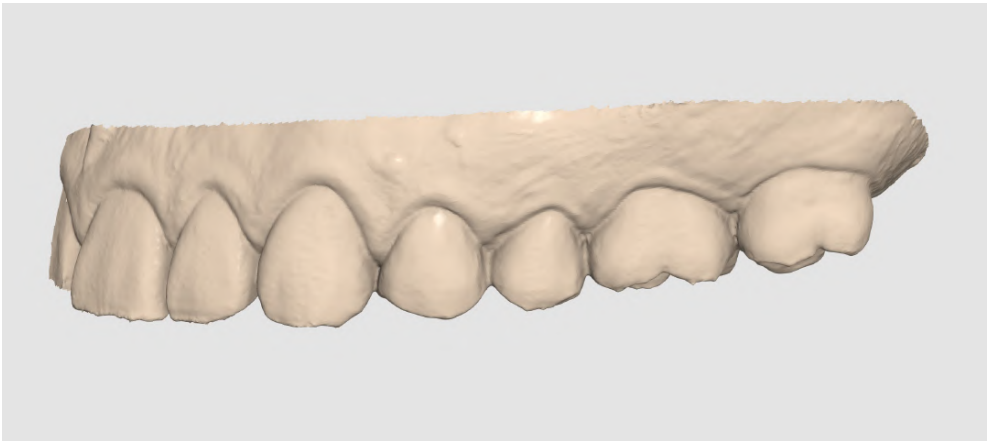+	平移	可移动模型。
↻	旋转	可用于旋转模型。
🔍	放大/缩小	可放大及缩小模型。
🖥	全屏显示	可将模型置于屏幕中央。
🌈	光泽	查看具有光泽效果的彩色数据(PBR渲染)。 
🌈	磨砂	查看具有磨砂效果的彩色数据(Phong渲染)。 
●	单色	查看单色数据。 
	数据 显示 模式	

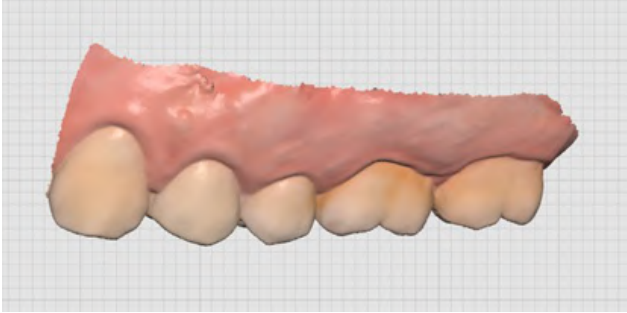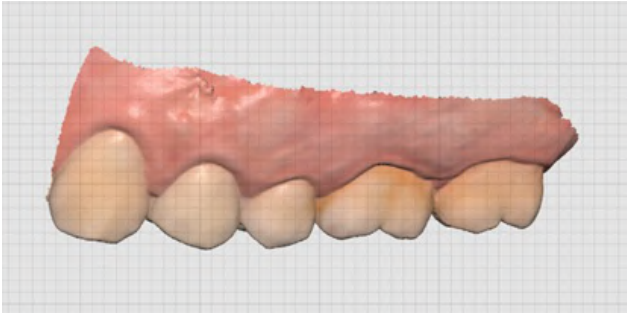	网格设置 (mm)	网格开启	可在背景里显示网格。 
		网格关闭	可在背景里隐藏网格。
		覆盖开启	可在模型上覆盖网格。 

2D图片控制


	下一张/上一张图片	可在图片中前后移动。
	编辑	可编辑图片。
	修剪/粘贴窗口	可拆分图片窗口并将其调整到所需的位置。还可修改窗口的大小。当窗口还原到其原始位置时，窗口的大小也会恢复至默认值。

“功能”工具

截图与备忘录


可将当前屏幕截取为2D图片，在上面进行绘制或添加注释。


还可将其与您的注释一并保存为文件并以参考资料的形式发送。

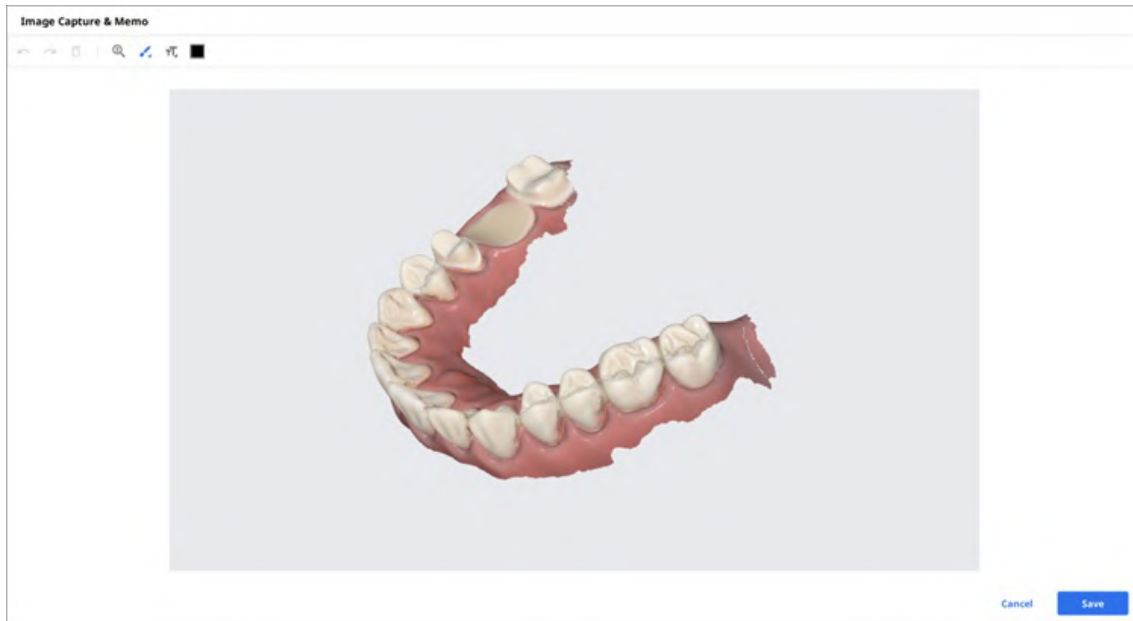

正畸截图


可截取当前视图方向及其上方/下方/左侧/右侧的图片。

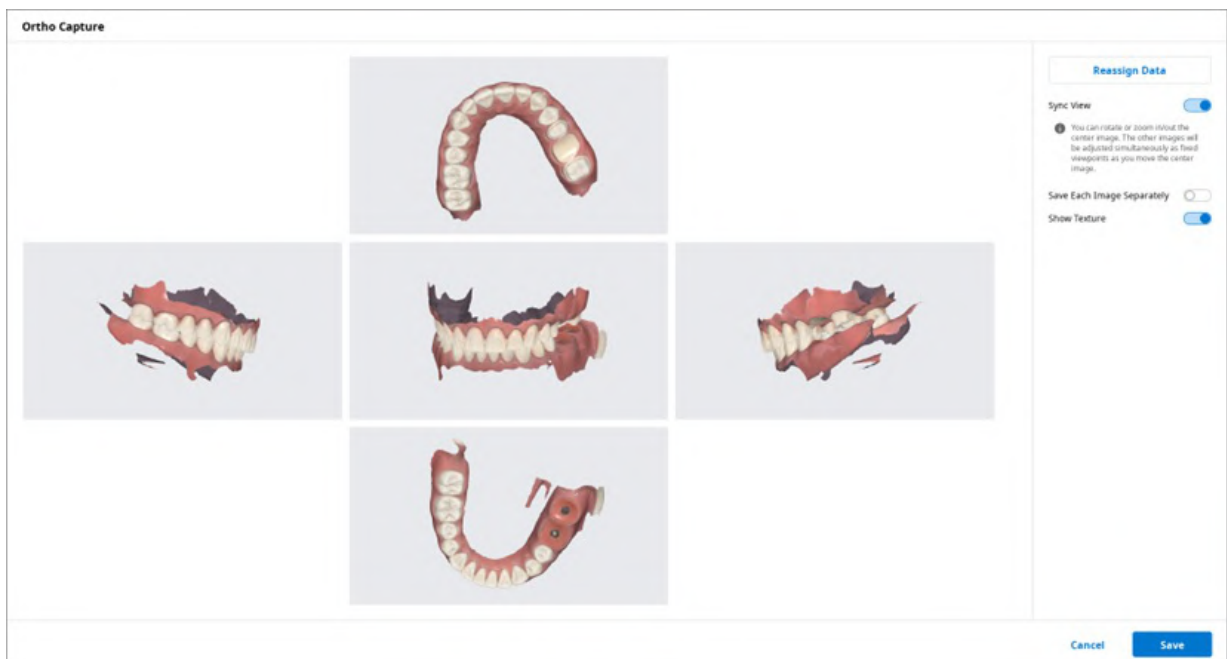

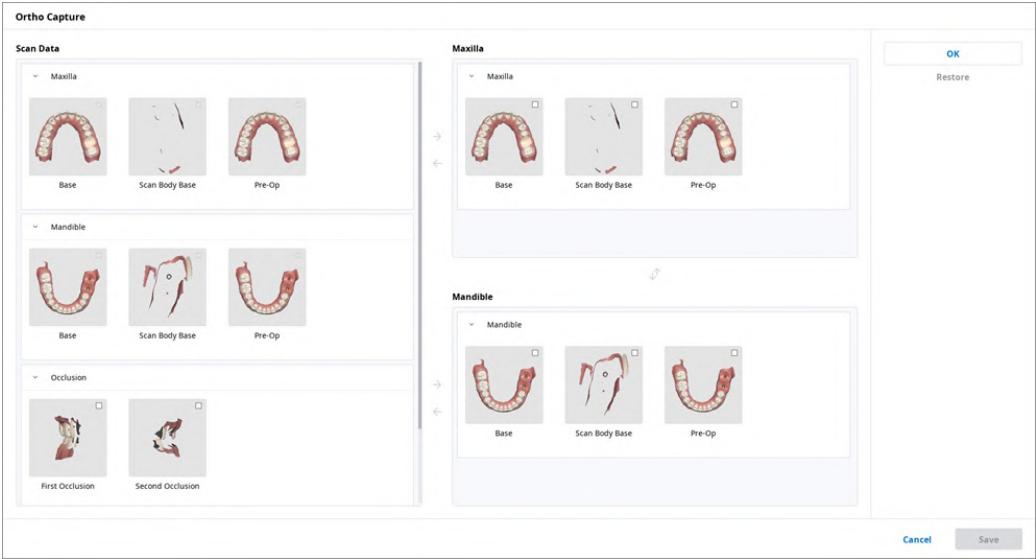同步视图	当该选项开启时，您可以旋转或放大/缩小位于正中央的图片。而当您移动位于正中央的图片时，其它的图片也将按照固定的视角被同时做出调整。 当该功能关闭时，您可以单独平移、旋转或放大/缩小所有图片。
单独保存每张图片	可高分辨率地保存每张图片。
显示纹理	可为模型开启/关闭纹理。
重新分配数据	可通过“重新分配数据”修改用于上颌/下颌的数据。您可以使用所修改的数据来创建并运用“正畸截图”的结果图片。  • 扫描数据: 显示病例的全部扫描数据。 • 上颌: 显示您为上颌所选的数据。 • 下颌: 显示您为下颌所选的数据。


填补缺口

可通过3D网格数据来填补缺口。

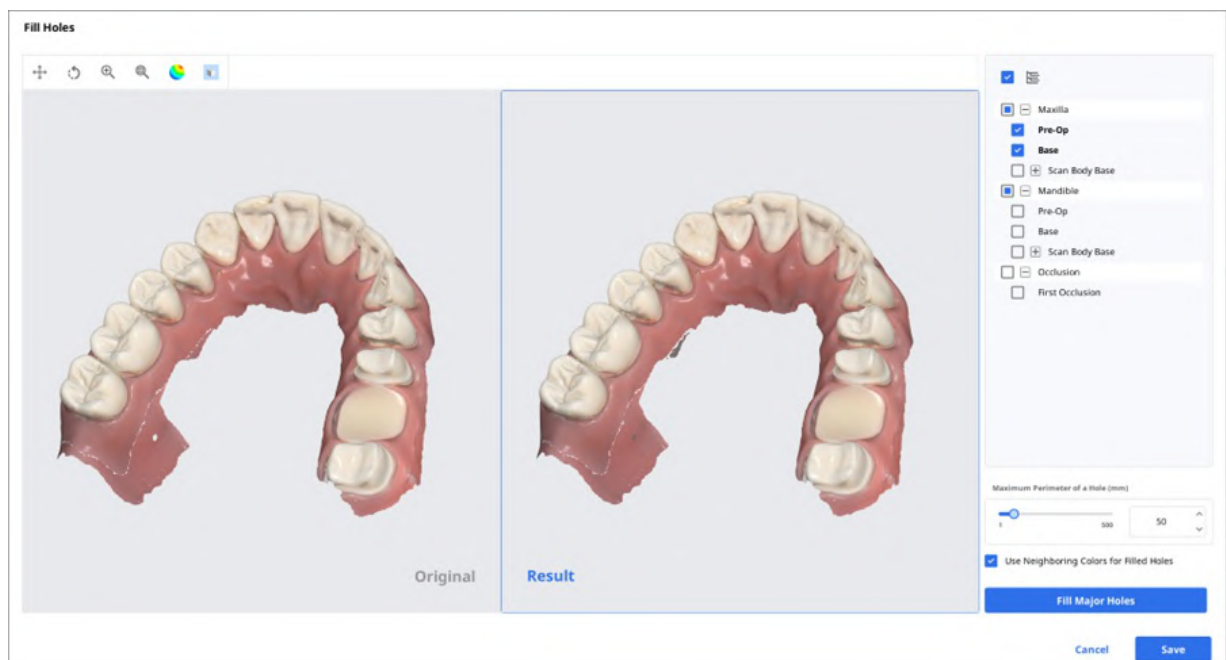

修剪


“修剪”可提供多种编辑数据的工具。

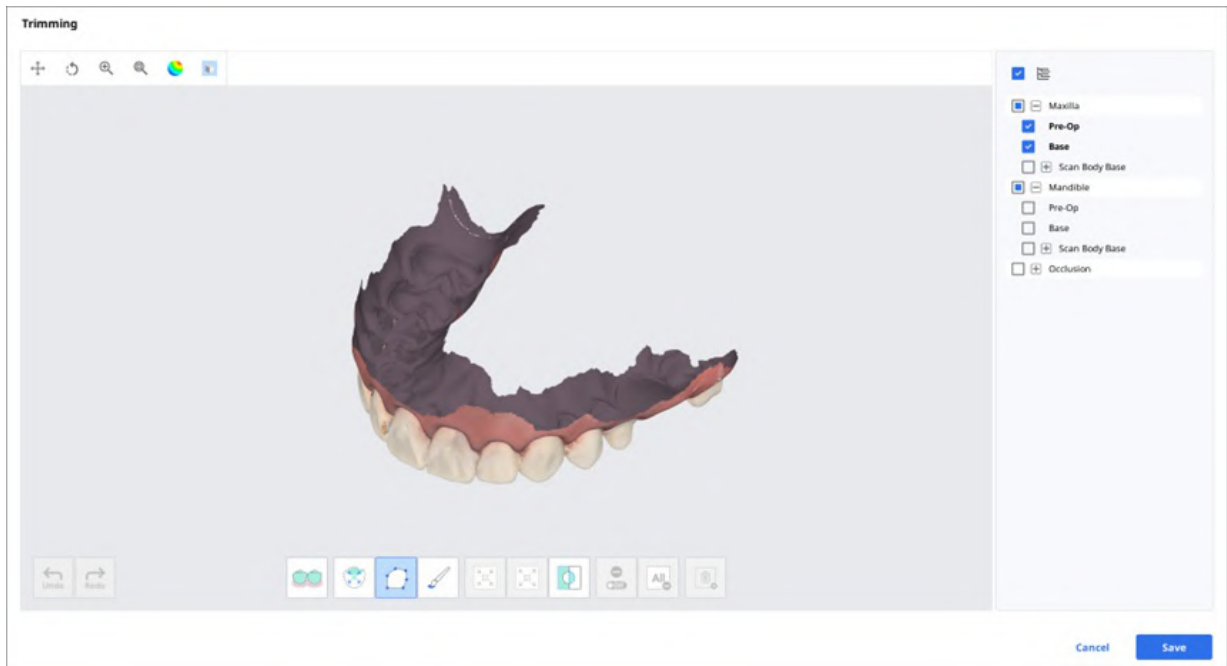

可以使用位于窗口底部的各式工具来编辑所选的3D数据数据。

选择		智能牙齿选择	自动选择排除掉牙龈部分的牙弓的所有牙齿。  注意 该功能仅适用于在“使用GPU”选项开启时通过Medit Scan for Clinics获取的扫描数据。
		智能单牙选择	只需通过轻轻一点即可自动选择单牙区域。您可以点击或拖拽牙齿。
		多边形选择	可选择画面中所绘制的多边形内的所有数据。
		笔刷选择	可选择屏幕中手绘路径上的所有数据。仅可选择正面。笔刷有3种不同的尺寸可供选择。
所选区域的调整		缩小所选区域	可缩小所选区域。
		扩展所选区域	可扩展所选区域。
		翻转所选区域	可翻转所选区域。
取消选择		选择/取消选择	可使用各种工具取消选择相应的区域。
		清除全部选择	可清除全部所选择的区域。
		删除所选区域	可删除所选区域中的数据。

1. 通过区域选取工具来选取您想修剪的区域。

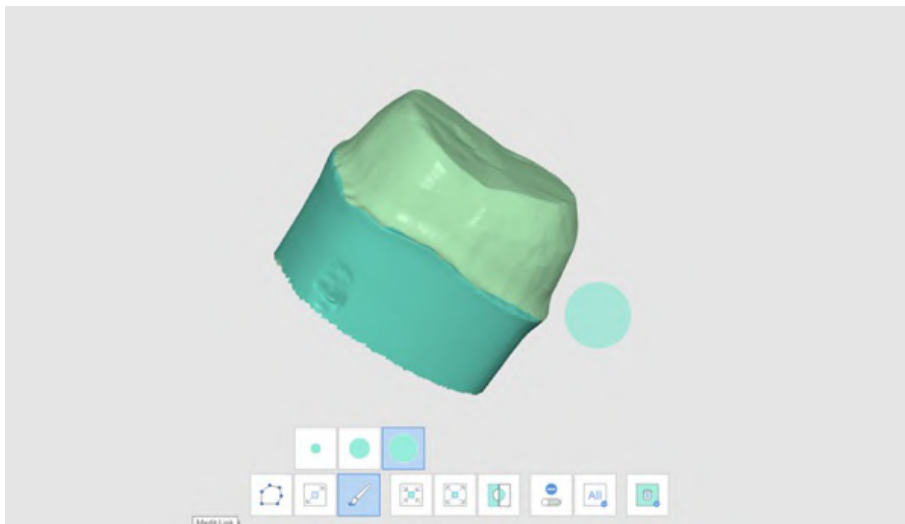


注意


多边形修剪工具可选取屏幕上所绘制的多边形内的所有数据，而笔刷修剪工具则只可选取正面的数据。

2. 您可以通过下方的3种工具来翻转、缩小或扩展所选择的区域。


- 翻转所选区域

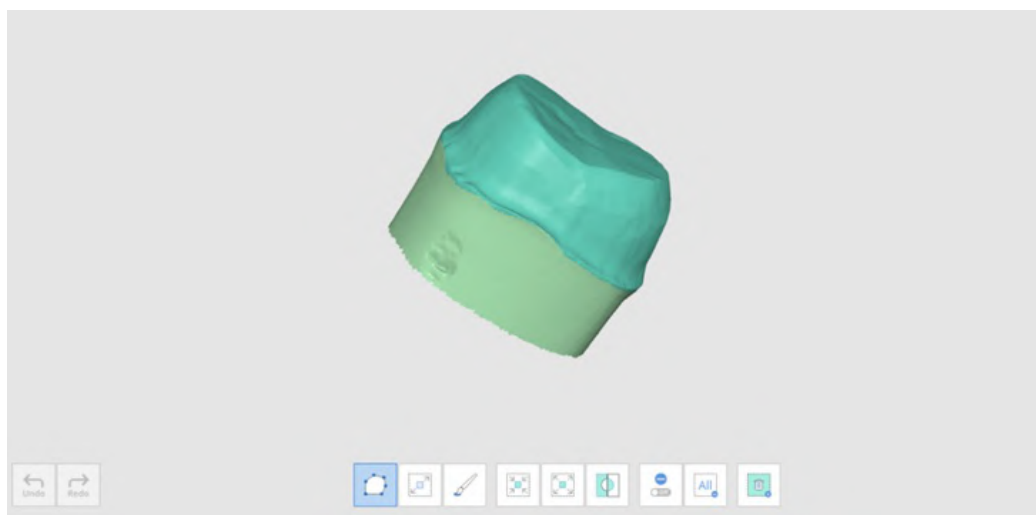

- 缩小所选区域

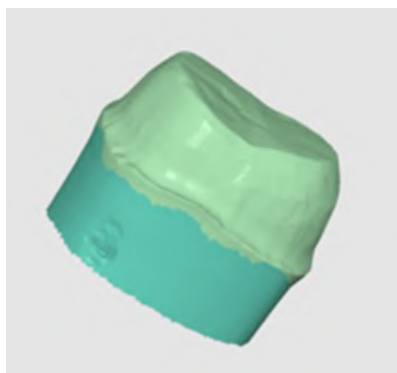


- 扩展所选区域

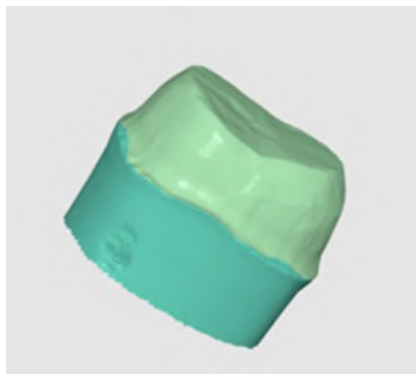


- 您可以通过“删除所选区域”工具来删除之前所选的区域。


优化咬合对齐

可优化咬合对齐。还可选择目标数据并调整咬合对齐。

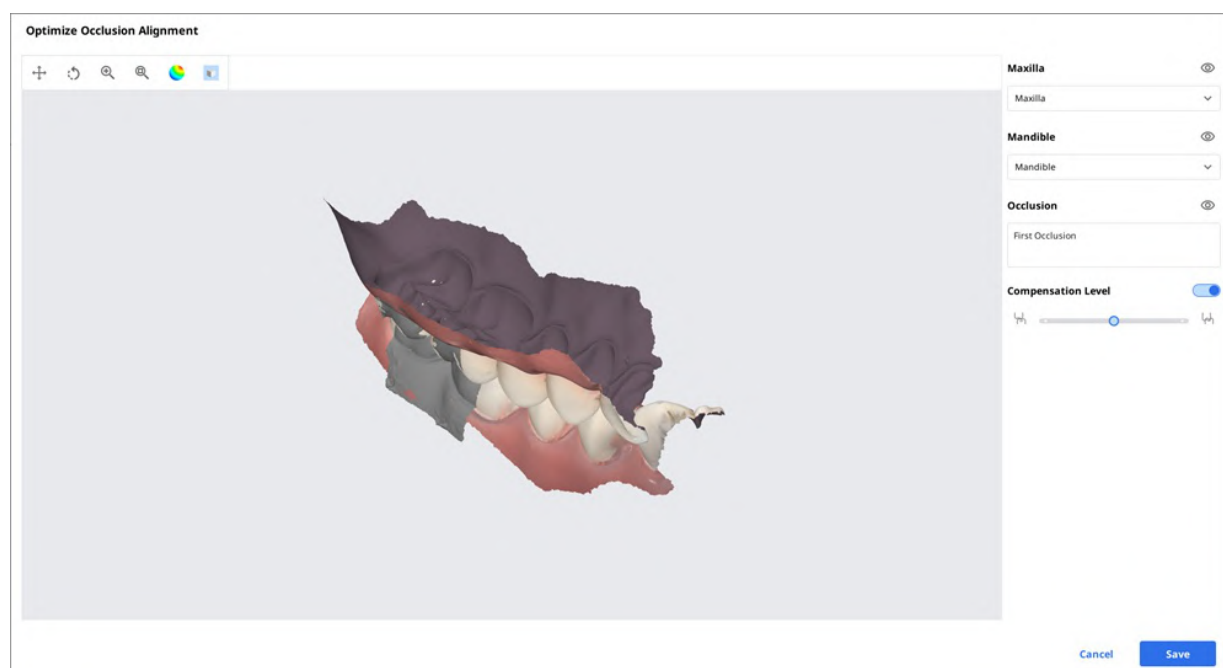


补偿等级

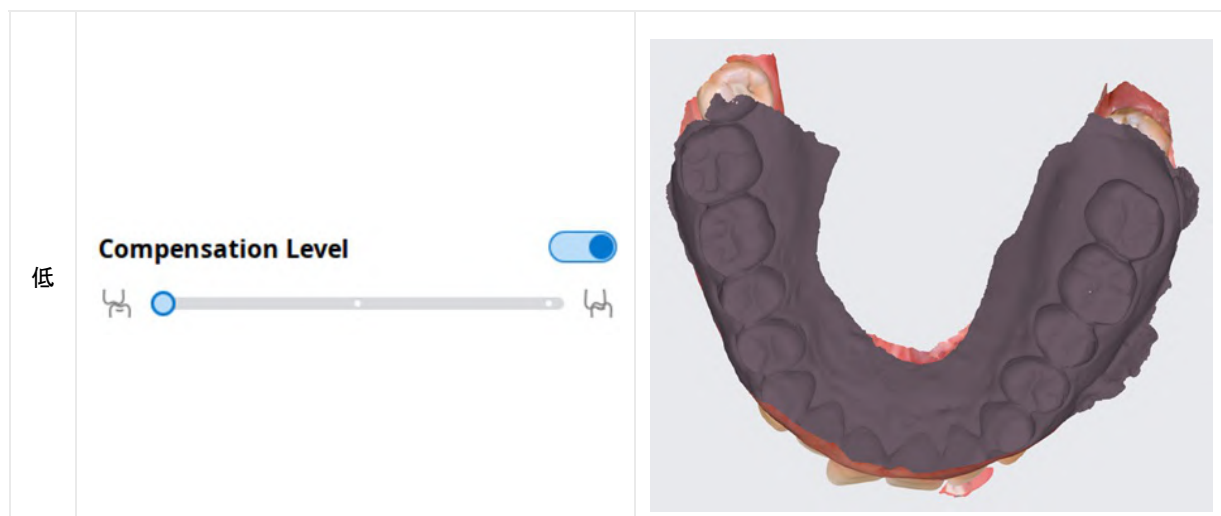

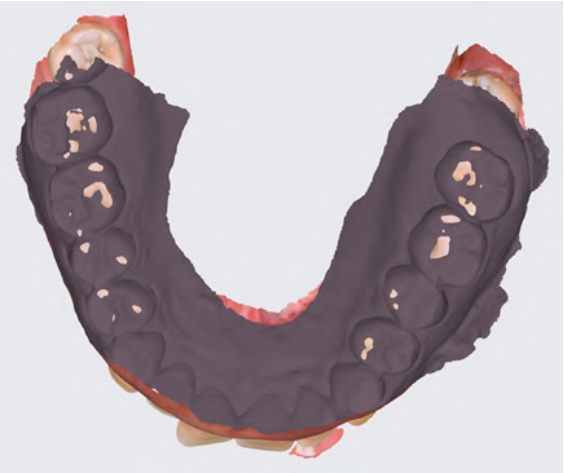中	Compensation Level ☒   	
高	Compensation Level ☒   	
关闭	Compensation Level ☐   	

下颌运动

您可以播放在Medit Scan for Clinics所录制的“下颌运动”视频以了解上下牙齿之间的动态咬合接触情况。

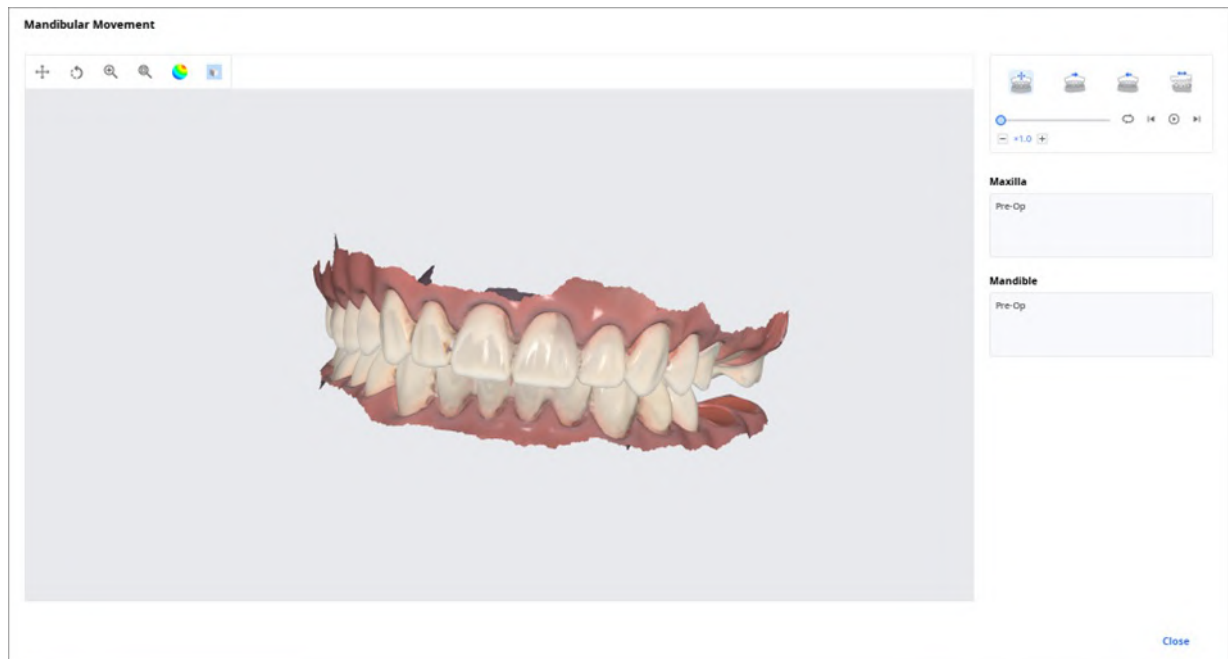

	自由运动	可播放下颌的自由运动过程。
	左侧方运动	可播放下颌向左侧方运动的过程。
	右侧方运动	可播放下颌向右侧方运动的过程。
	前伸运动	播放下颌前伸运动的视频。

在“文件浏览器”中管理多咬合数据

可从Medit的扫描应用程序中获取多个咬合数据的结果。

Medit Link通过“文件浏览器”来提供管理结果的功能。

如何管理多个结果


当用户从Medit Scan for Clinics中获取了多个咬合结果时，Medit Link可提供选择其中一项结果的选项。

结果列表将按名称列出，您可以随之选择其中一项。

所选模型将显示在“数据树”及“模型显示区域”中。



您可以使用箭头图标来折叠列表并修改相应的条目。

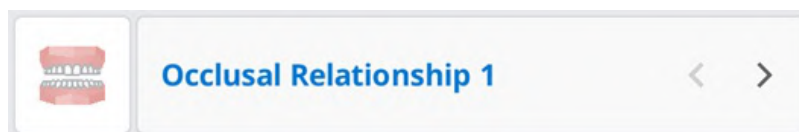

视图选项

您可以修改视图选项以自定义患者/病例库/技工病例库/收件箱/订单管理中病例列表的布局形式。

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

状态筛选项

可显示或隐藏每个表示病例状态的筛选项。隐藏的状态筛选项将不会显示在病例库/技工病例库/收件箱/订单管理的屏幕上。

您可以通过状态筛选来轻松找到您所需的病例。

- 您可以点击您想查看的状态进而使系统仅显示该状态下的病例。
- 您可以一次性的选择多个状态。

每个工具箱可用的筛选项如下所示：

工具箱	状态筛选
病例库	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已订购/病例已完成
订单管理	全部/待接单/已取消/已拒绝/已接单/已发货/病例已完成
收件箱	全部/待接单/已取消/已拒绝/已接单/已就绪/已发货/病例已完成
技工病例库	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已完成

表头选项

可选择要在患者/病例库/技工病例库/收件箱/订单管理的病例列表中显示的项目。您可以在“列表视图”中修改表头的顺序或表栏的宽度进而使用户体验达到最佳效果。

每个工具箱可用的表头如下所示：

工具箱	表头
患者	患者姓名/患者ID/性别/病例数/注册日期/出生日期/上次扫描日期
病例库	状态/病例名称/出生日期/表格信息/最后修改日期/扫描日期/订购日期/实验室名称
订单管理	状态/病例名称/患者姓名/扫描日期/订购日期/实验室名称/要求交货日期/最后修改日期
收件箱	状态/病例名称/订购日期/要求交货日期/最后修改日期/诊所名称
技工病例库	状态/病例名称/患者姓名/表格信息/最后修改日期/要求交货日期/扫描日期/诊所名称/订购日期

视图类型

可在病例库的“图库视图”与“列表视图”中选择视图类型。

每个工具箱可用的视图类型选项如下所示：

工具箱	视图类型选项
患者	列表视图
病例库	列表视图/图库视图
订单管理	列表视图
收件箱	列表视图
技工病例库	列表视图

分组选项

选择一种分组选项即可通过该选项来分类并重新排列列表中的病例。

每个Box可用的分组选项如下：

工具箱	分组选项
病例库	无/患者姓名/扫描日期/订购日期
订单管理	无/扫描日期/订购日期/要求交货日期
收件箱	无/订购日期/要求交货日期
技工病例库	无/要求交货日期

注意：

分组选项不可用在“患者”、“病例分享”及“垃圾箱”中。

排序选项

选择一个排序选项即可根据该选项来修改列表中的病例顺序。

每个Box可用的排序选项如下：

工具箱	分组选项	排序选项
患者	-	患者姓名/患者ID/出生日期/注册日期/病例数/上次扫描日期
病例库	无	患者姓名/最后修改日期/扫描日期/订购日期/实验室名称
	患者姓名	最后修改日期/扫描日期/订购日期/实验室名称
	扫描日期	患者姓名/最后修改日期/订购日期/实验室名称
	订购日期	患者姓名/最后修改日期/扫描日期/实验室名称
订单管理	无	患者姓名/扫描日期/订购日期/要求交货日期/实验室名称
	扫描日期	患者姓名/订购日期/要求交货日期/实验室名称
	订购日期	患者姓名/扫描日期/要求交货日期/实验室名称
	要求交货日期	患者姓名/扫描日期/订购日期/实验室名称
收件箱	无	患者姓名/订购日期/要求交货日期/诊所名称
	订购日期	患者姓名/扫描日期/要求交货日期/诊所名称
	要求交货日期	患者姓名/订购日期/诊所名称
技工病例库	无	患者姓名/最后修改日期/要求交货日期/诊所名称
	要求交货日期	患者姓名/最后修改日期/诊所名称


 注意：

排序选项不可用在“病例分享”及“垃圾箱”中。

筛选及搜索


按患者筛选

可按患者姓名来筛选并显示病例。您仅需要通过筛选您要操作的患者便可创建列表。

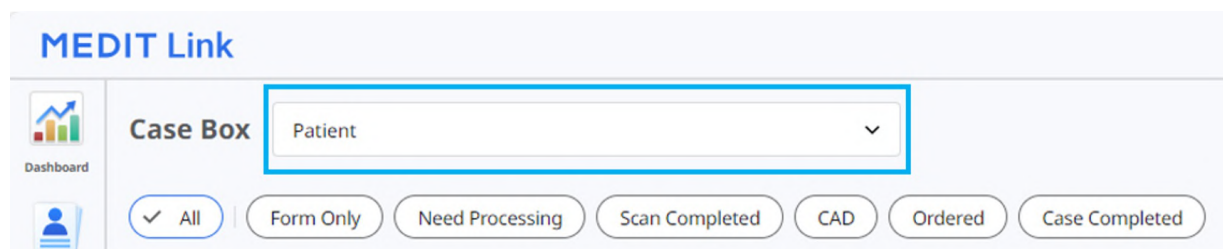

The screenshot shows the MEDIT Link interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user icon. The main area has a 'Case Box' dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 输入患者姓名。

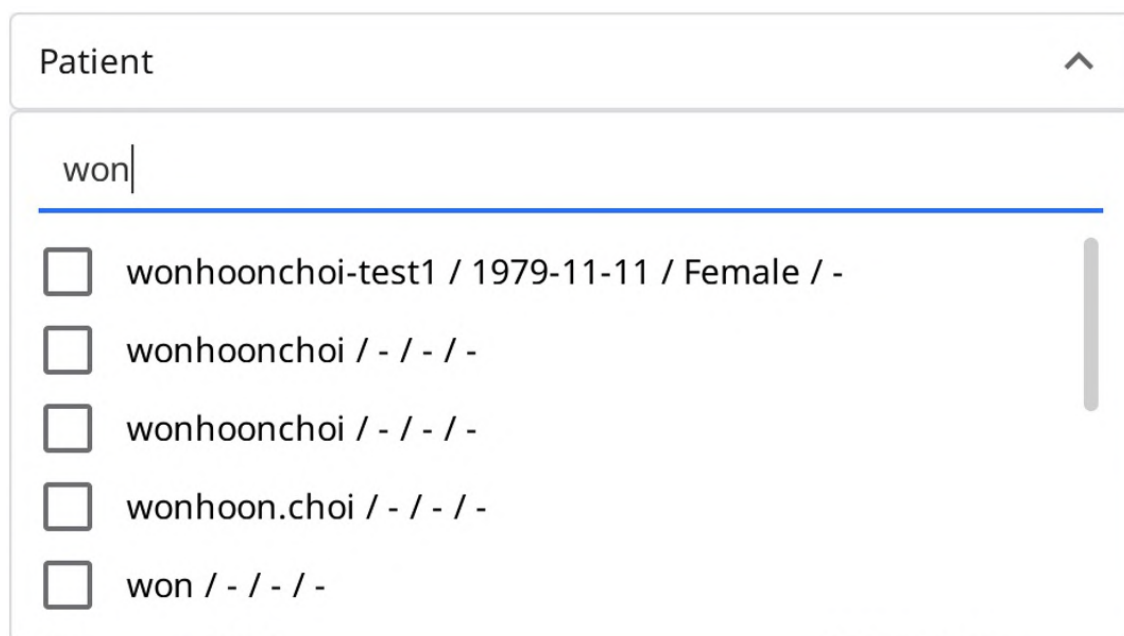

This screenshot shows the expanded search dropdown for the 'Patient' case box. The search input field contains the text 'won'. Below the input field is a list of five search results, each preceded by a checkbox:

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 在下方的搜索结果中选择相应的患者。

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 只有所选择的患者的病例会被显示列表中。

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi Clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20

2018-01-01~2023-10-24

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

按日期搜筛选

可筛选并显示在所设置时段进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。

2020-08-10 ~ 2020-09-09


2. 从列表中选择相应的时间段。

- 全部:显示全部病例。
- 自定义时间范围:指定对病例进行过最后一次修改的起始及结束日期。
- 当天:显示在当天进行过最后一次修改的病例。
- 昨天:显示在昨天进行过最后一次修改的病例。
- 最近7天:显示除当天外在最近7天进行过最后一次修改的病例。
- 最近30天:显示除当天外在最近30天进行过最后一次修改的病例。
- 本月:显示在本月进行过最后一次修改的病例。
- 上一个月:显示在上个月进行过最后一次修改的病例。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

高级搜索能力


可利用搜索能力来快速找到您想要的信息。

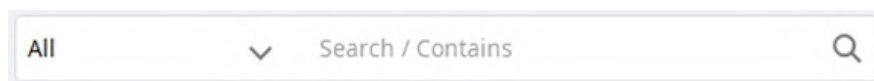A search bar with a dropdown menu currently showing 'All'. To the right of the dropdown is a search icon (magnifying glass). The text 'Search / Contains' is visible inside the bar.

每个工具箱可用的搜索条件如下:

患者	全部、患者姓名、患者ID
病例库	全部、病例名称、患者姓名、患者ID、表格信息、实验室名称
订单管理	全部、病例名称、患者姓名、患者ID、实验室名称、订单ID
收件箱	全部、病例名称、患者姓名、诊所名称、订单ID
技工病例库	全部、病例名称、患者姓名、表格信息、诊所名称、订单ID
病例分享	“病例分享”名称(包含)、患者姓名(相等)
垃圾箱(诊所)	全部/病例名称/患者姓名/实验室名称/删除者
垃圾箱(实验室)	全部/病例名称/患者姓名/诊所名称/删除者

您可以在选择“搜索条件”的同时选择“包含”或“相等”这两种逻辑方法的任意一种。

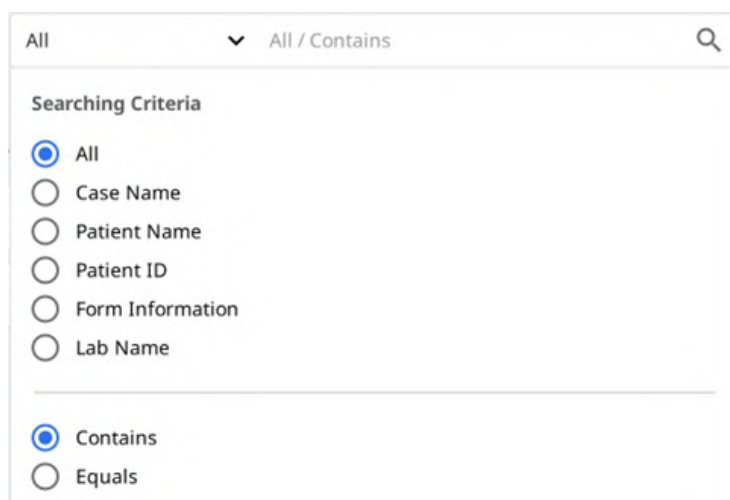
An expanded search criteria dropdown menu. It has a title 'Searching Criteria'. Under this title, there are two groups of radio buttons. The first group lists search criteria: 'All' (selected), 'Case Name', 'Patient Name', 'Patient ID', 'Form Information', and 'Lab Name'. The second group lists logical operators: 'Contains' (selected) and 'Equals'.

创建/编辑/复制/删除病例

创建病例

在“病例库”(诊所)中创建病例

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

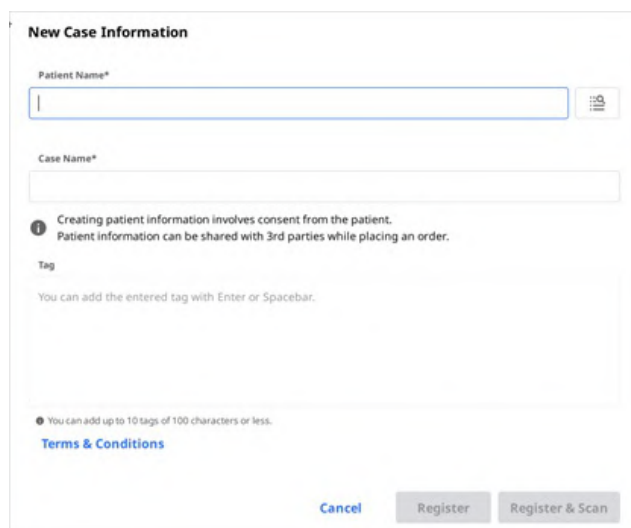

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Tag**: A text input field with a note: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Terms & Conditions**: A link below the tag field.
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan" at the bottom.

Below the Case Name field, there is a note: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."

2. 输入基础信息, 如患者姓名及病例名称。
 - 如您要输入一个不在患者列表上的名字, 则这名新患者将自动被添加到列表中。
 - 如您要输入一个已在患者列表中的名字, 则您可以从列表中直接进行选择。
 - 如您要向现有的患者注册病例, 则您可点击患者列表来选择现有的患者。



- 在“患者列表”对话框中, 您可以注册新患者或编辑现有患者的信息。

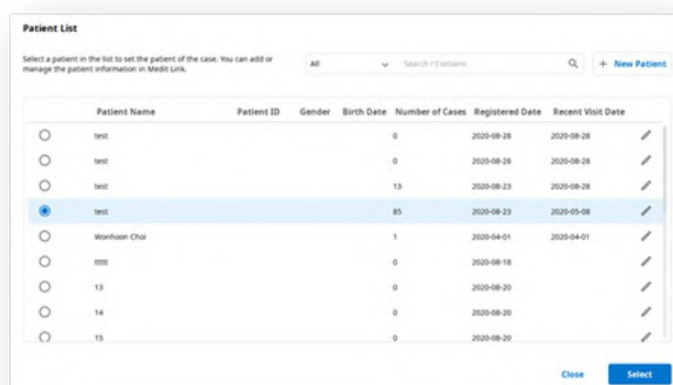


The "Patient List" dialog box shows a table of existing patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. A search bar and a "+ New Patient" button are at the top right. The "Select" button is at the bottom right.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28	
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08	
☐	Wanhuan Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-09-18		
☐	13				0	2020-09-20		
☐	14				0	2020-09-20		
☐	15				0	2020-09-20		

3. 系统将自动填写病例名称; 当然, 您依旧可以对其进行修改。
4. 点击“注册&扫描”来完成病例注册并进行扫描。
 - **注册**: 您将被转至主页。适用于注册多个病例时的情况。
 - **登记&扫描**: 可前往“表格”标签来为病例注册表格信息。

在“技工病例库”(实验室)中创建病例

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

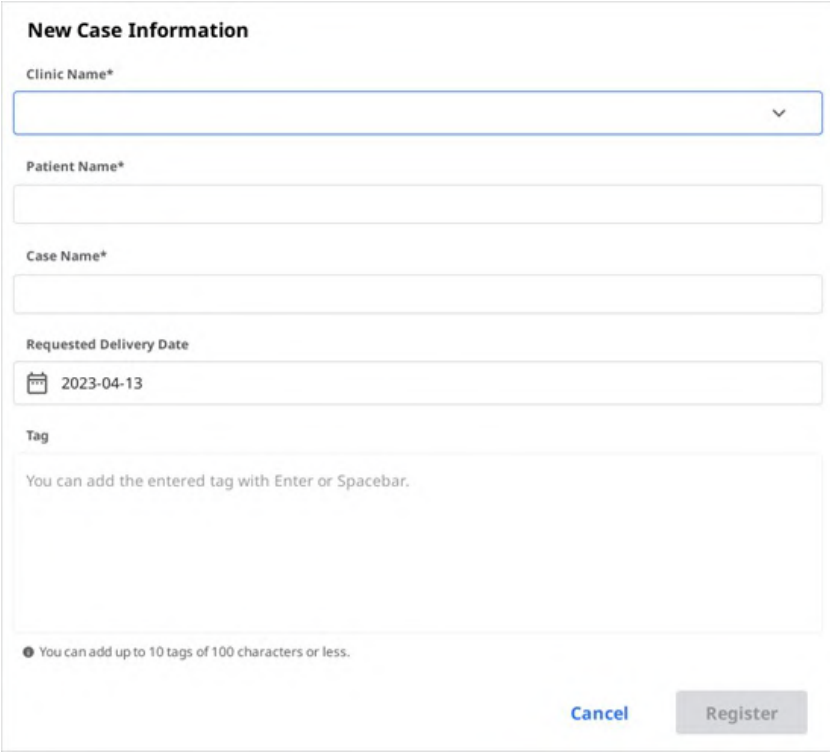

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


Cancel Register

2. 输入或选择诊所名称。
3. 输入患者姓名及病例名称。系统将自动填写病例名称；当然，您依旧可以对其进行修改。
4. 据工作的完成日期来输入预计交货日期。
5. 在注册完病例后，您将被转至主页。

编辑病例

在“病例库”(诊所)中编辑病例

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

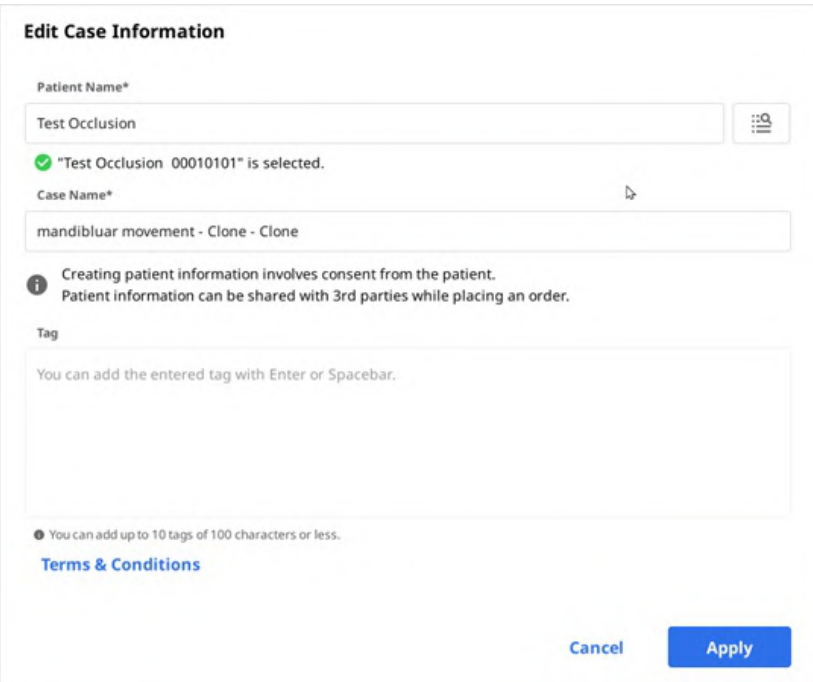

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

2. 点击“搜索”图标来修改患者姓名。请注意:不可直接编辑;相反,您可以找一个您想要替换当前姓名的患者姓名并从列表中来编辑患者信息。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 检查您想要替换当前姓名的患者姓名。
4. 如想要创建新患者, 请按下“新患者”按钮。
5. 使用“编辑”图标来修改有关患者的注册信息。
6. 按下“应用”即可完成整个流程。

在“技工病例库”(实验室)中编辑病例

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 编辑完成后点击“应用”即可。

注意:

您可以编辑通过“收件箱”中的订单所收到的病例的相关信息。


复制病例

在“病例库”(诊所)中复制病例

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 您需要选择将何种信息复制到新病例。

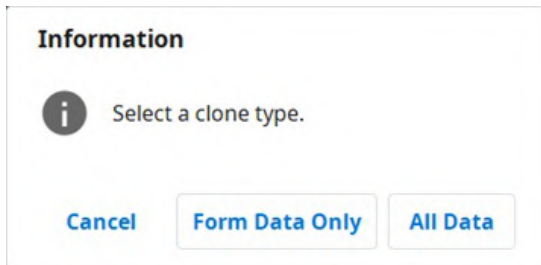

3. 选择“仅复制表格信息”或“全部数据”。
4. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称] — 复制”的病例。

在“技工病例库”(实验室)中复制病例

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 复制所有数据来创建新病例。
3. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称] — 复制”的病例。


删除病例

删除病例(诊所及实验室)

1. 点击“删除”图标。



2. 点击“OK”来删除病例。

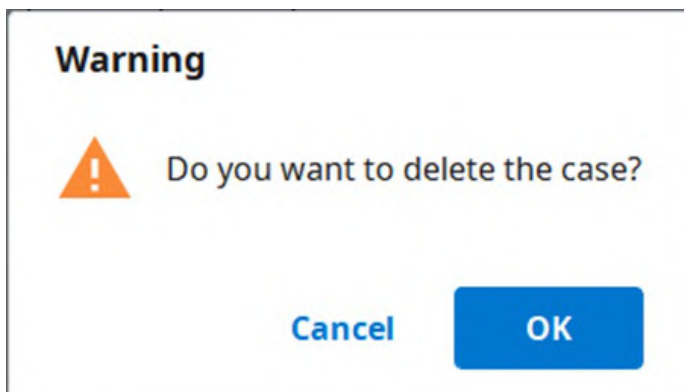

3. 已删除的病例将被移至垃圾箱且可在必要时被恢复。

表格信息

您可以基于您所连接的程序及治疗类型来输入表格信息。

您所输入的信息将被用作扫描、CAD程序及订购的基本信息。

在“病例库”中注册表格信息

在表格标签中输入

1. 选择您要按牙齿还是牙弓来输入治疗信息。
2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确, 则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册到订单列表中。
3. 点击“保存”即可保存您的注册信息。

在“技工病例库”中注册表格信息

在表格标签中输入


1. 选择您想使用的扫描程序。
2. 从下方选择一项可代表您扫描策略的选项: 牙齿/可调节式多模盘/多模盘。
3. 具体方法会基于所选的扫描程序而产生不同。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
牙齿	O	O
牙弓	O	O
可调节式多模盘	X	O
多模盘	X	O

4. 选择扫描流程所需的牙齿、牙弓或代型编号。
5. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确, 则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册至列表中。
6. 点击“保存”即可保存您的注册信息。

将牙齿连接至牙桥

您可以在相同的材料被应用至多颗邻牙时将多颗牙齿连接至牙桥。点击所选牙齿旁边的牙桥图标来进行连接或断开。

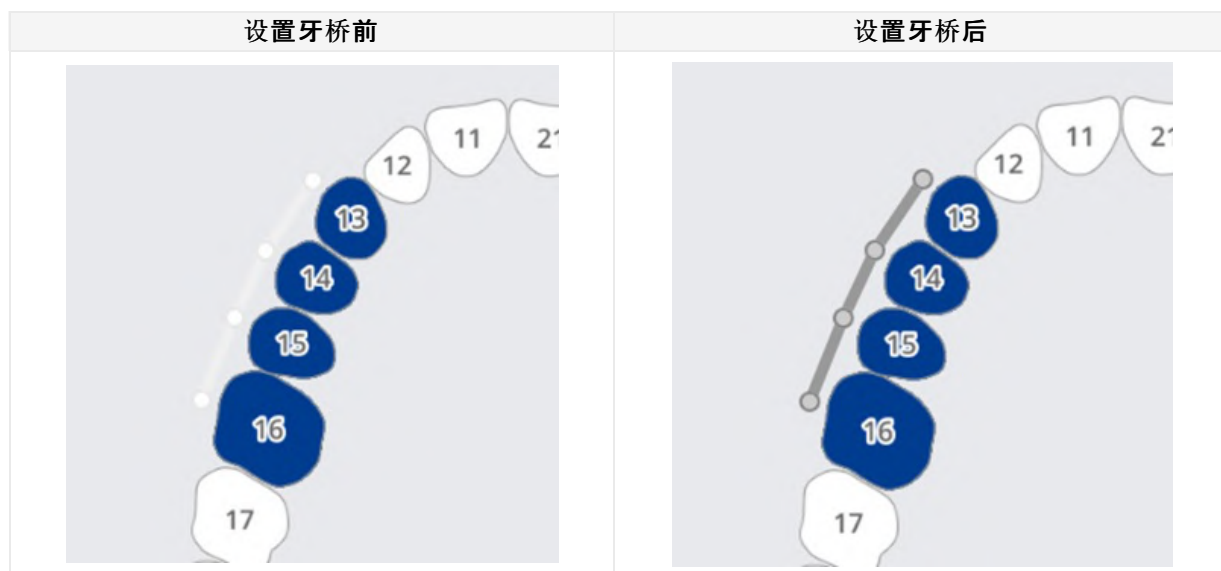

设置扫描选项

根据您正在使用的程序，系统可提供不同的扫描选项。

所选的扫描选项将被传送至每个扫描程序。

Medit Scan for Labs

通用选项

	邻牙	可标记基牙及邻牙并将此信息传送至扫描程序。
	对合牙	可自动标记对合牙并将此信息发送至扫描软件。
	咬合架	可在扫描软件中显示用于选择咬合架的选项。
	移动标记点	可在扫描程序中使用“牙颌移动”扫描策略。

按牙齿选择

	扫描杆	可在扫描程序中设置扫描扫描杆的策略。
	术前扫描	可在扫描程序中设置扫描术前模型的策略。
	蜡型扫描	可在扫描程序中设置扫描蜡型的策略。

添加至收藏夹

您可以通过将产品添加为收藏来快速选择相应的产品。

添加为收藏的列表可作为模板来管理并且可通过“导出”与“导入”功能来进行共享。

添加至收藏夹

1. 选择牙齿编号。
2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 即使没有全选, 类型 — 方法 — 材料 — 牙色也可被注册为收藏。
3. 点击“星号”图标。



4. 除牙齿编号外的所选参数均将被列在您收藏夹的搜索列表中。

管理收藏夹模板

您可以注册、管理及共享不同类型的模板。

添加	可添加新模板。
重命名	可重命名当前模板。
删除	可删除当前模板。
导出	可将当前模板导出至文件。
导入	可导入模板文件。

操作扫描/CAD

扫描流程

您可基于所输入的信息来进行扫描。

1. 输入/保存治疗信息并选择必要的扫描选项。
2. 点击窗口右上角的“扫描”按钮。

CAD流程


Medit Link可提供DentalCAD集成App, 用于连接Medit Link与DentalCAD。

1. 安装“应用商店”中的DentalCAD集成App。
2. 转至“病例详情”并点击“快速启动器”上的DentalCAD集成App图标。
3. 在弹出的对话框中指定要在电脑上安装的DentalCAD App的路径。
4. 输入扫描病例的病例详情并点击DentalCAD集成App图标, 其将弹出一个用于创建dentalProject文件的对话框。
5. 注册DentalCAD的表格信息并点击“打开”来打开CAD程序。
6. 如您安装DentalDB集成App, CAD结果将被自动发送至exocad中指定的保存路径中。(仅适用于实验室账号)


利用附加App

附加“快速启动器”

您可以通过点击“快速启动器”中已安装的App图标来直接运行各种附加的App。您可以通过拖拽来修改App图标的顺序。

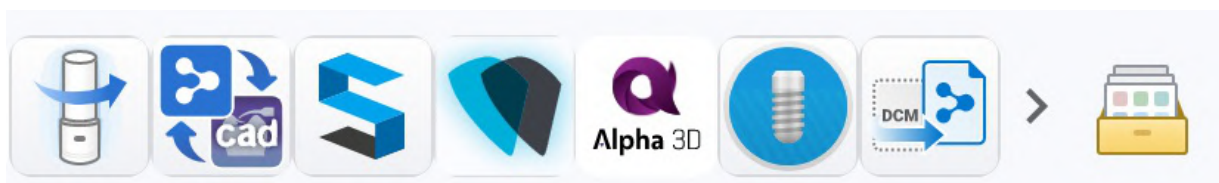

App启动器管理

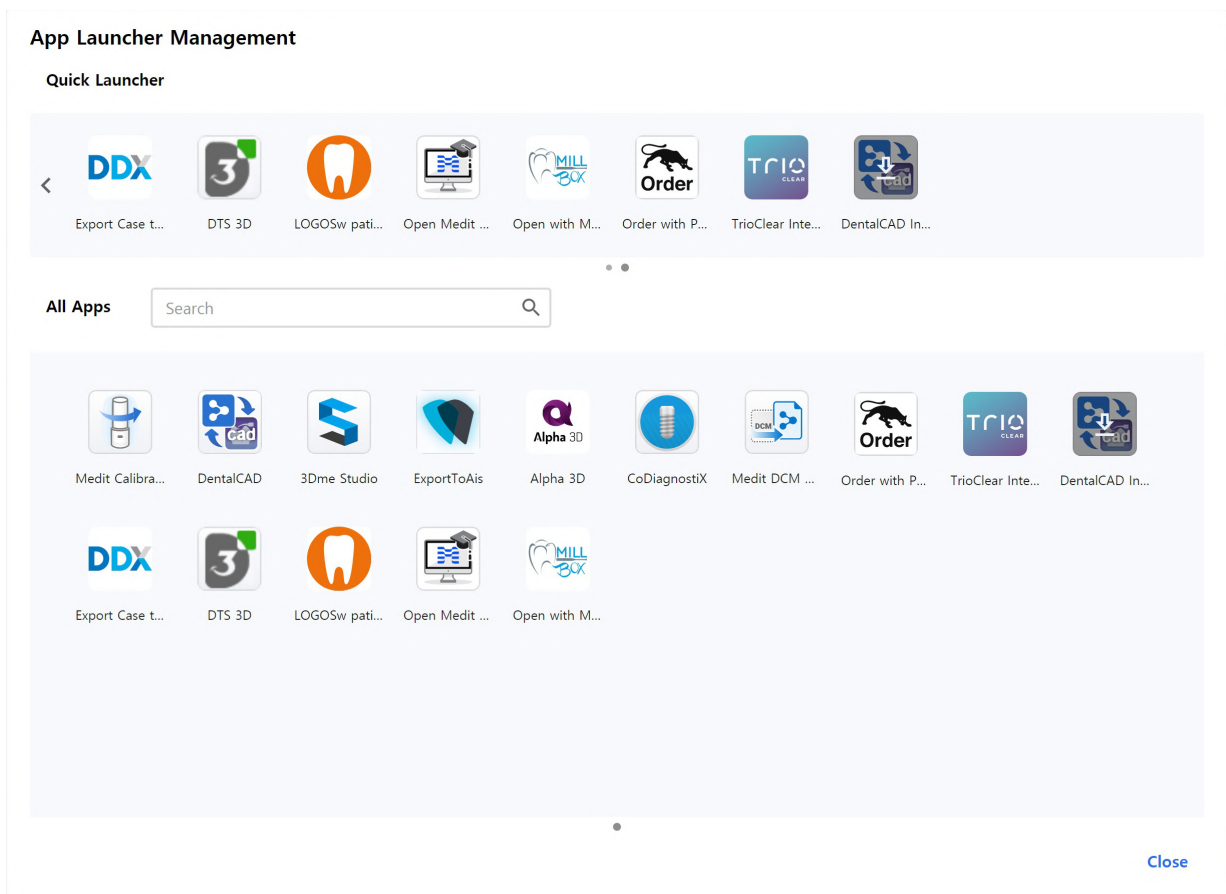

快速启动器

您可以指定要在“快速启动器”中显示的App。您可以通过拖动来更改App图标顺序，也可以创建文件夹来将类似的App进行归类整理。

所有App

您已安装的所有App均将得到显示。您可以在App图标上点击鼠标右键，进而将相应的App添加到“快速启动器”中。通过鼠标右键点击上下文菜单，您还可以选择运行、安装或卸载相应的App。

获取结果文件

导出扫描结果文件

除了通过订单与合作伙伴共享结果外，Medit Link还可让您运用导出功能以您所期望的格式来存储您的结果文件。

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

116

文件导出路径	可指定您想要存储结果文件的路径。
文件夹名称	系统将创建一个新的文件夹并将所有结果文件存储在其中。 默认文件夹的名称将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件夹的名称。 还可在“设置”>“导出选项”>“文件夹名称规则”中来定义名称规则。
文件名	可设置结果的文件名。默认文件名将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件名。 还可通过“设置”>“导出选项”>“文件名规则”来定义名称规则。
类型	选择您要使用的设计程序。 Medit Link将根据您的选择来自动调整文件，以使您无需进行额外的轴线对齐即可继续进行设计。
网格格式	可指定网格文件的格式。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩文件	可将所有结果压缩到单个文件中。
合并单个网格	可将上颌或下颌的结果与单颗牙齿合并在一起。适用于无法将多个文件导入程序的情况。
导出所有咬合关系	当扫描App生成了多个咬合结果时，您可以一次性导出所有咬合结果。
将病例信息保存为PDF	可将病例信息与结果保存为PDF。

从“病例列表”中导出结果文件

您可以通过“病例库”及“技工病例库”中病例列表上方的“导出”选项来导出一份病例或同时导出多份病例的结果文件。

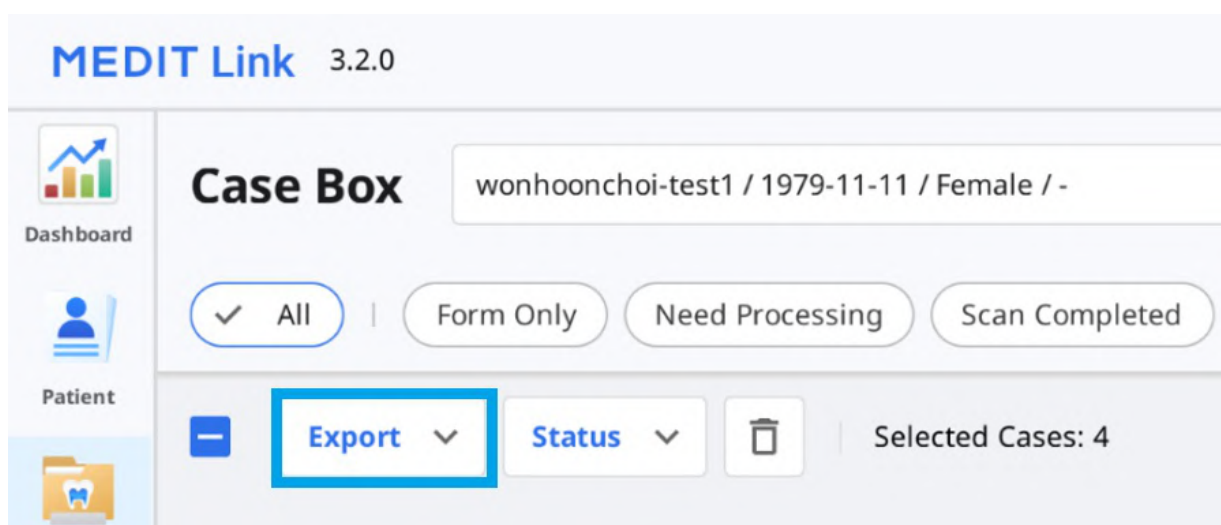

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 从列表中选择您想导出结果文件的所有病例。

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. 点击“导出”并选择“结果文件”。

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. 设置目标文件夹、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

 注意：

当为多份病例导出文件时，“文件夹名称”及“文件名称”字段不可编辑。
文件夹名称及文件名可根据您在“设置”>“导出选项”为“文件夹名称规则”及“文件名称规则”所设置的规则来自动进行创建。

5. 点击“导出”。
6. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

从“文件浏览器”中导出结果文件

您可以通过“文件浏览器”标签右上角的“导出”图标来为病例导出扫描结果文件。

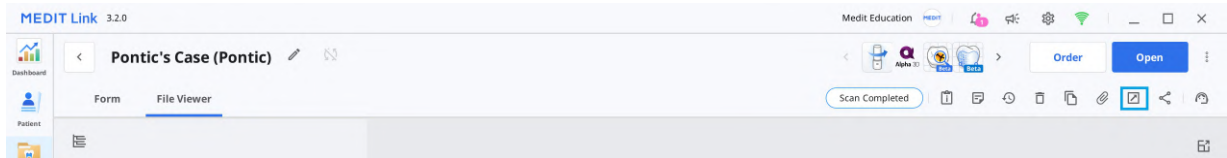

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 点击打开列表中的某份病例。
3. 点击“文件浏览器”标签右上角的“导出”图标。

4. 设置目标文件夹、文件名、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files


☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. 在“文件列表”标签中，您可以通过取消选择多余的文件来为病例选择所需的文件。

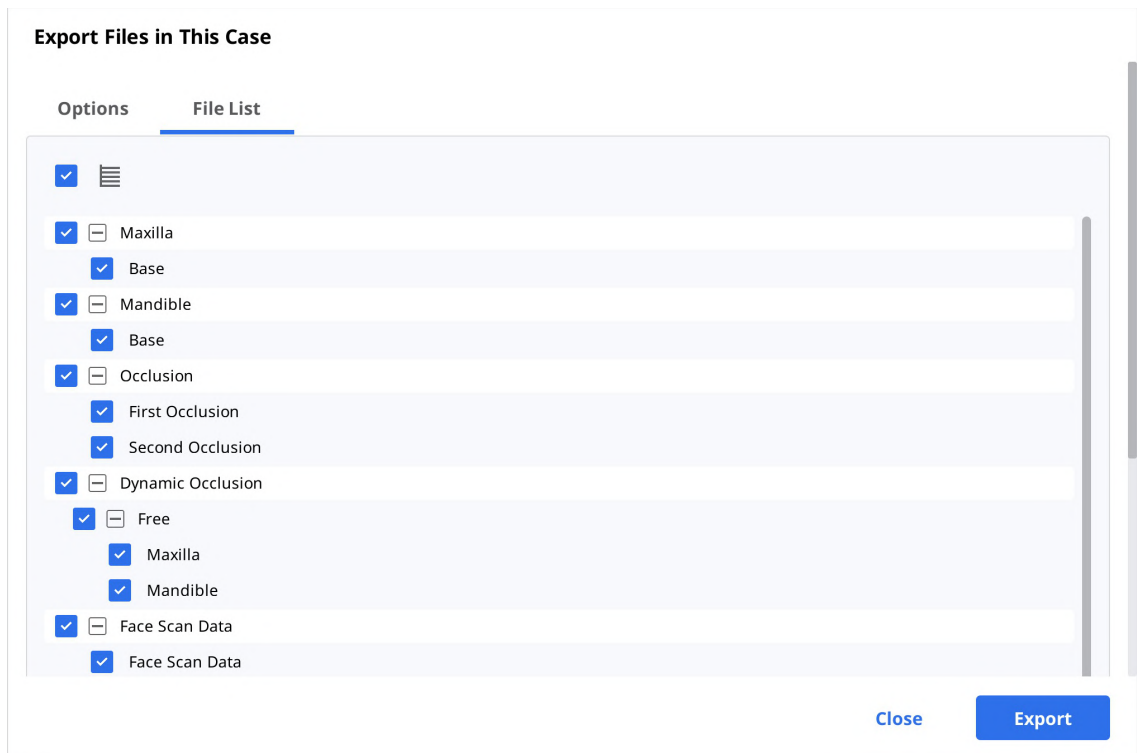


6. 点击“导出”。
7. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

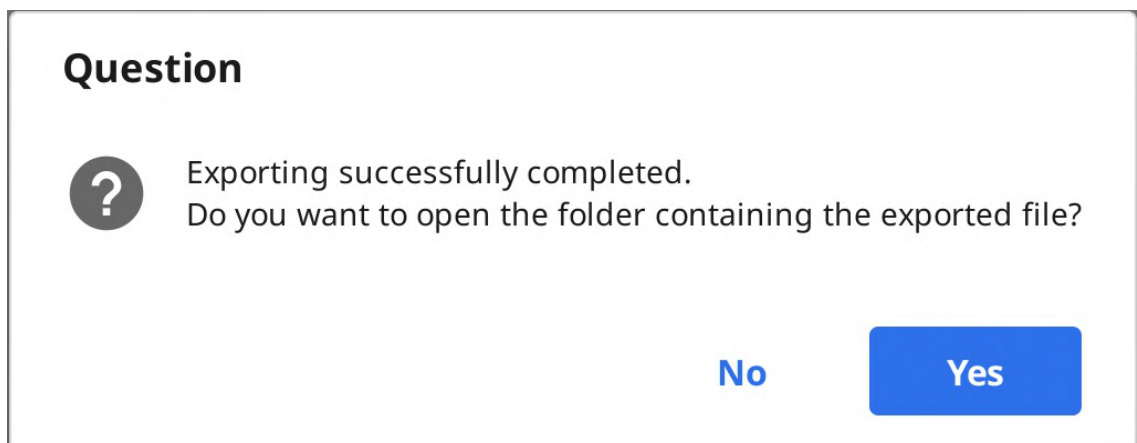

从“数据树”中导出结果文件


您可以从文件浏览器的扩展菜单中导出特定数据组中的一份或多份文件。

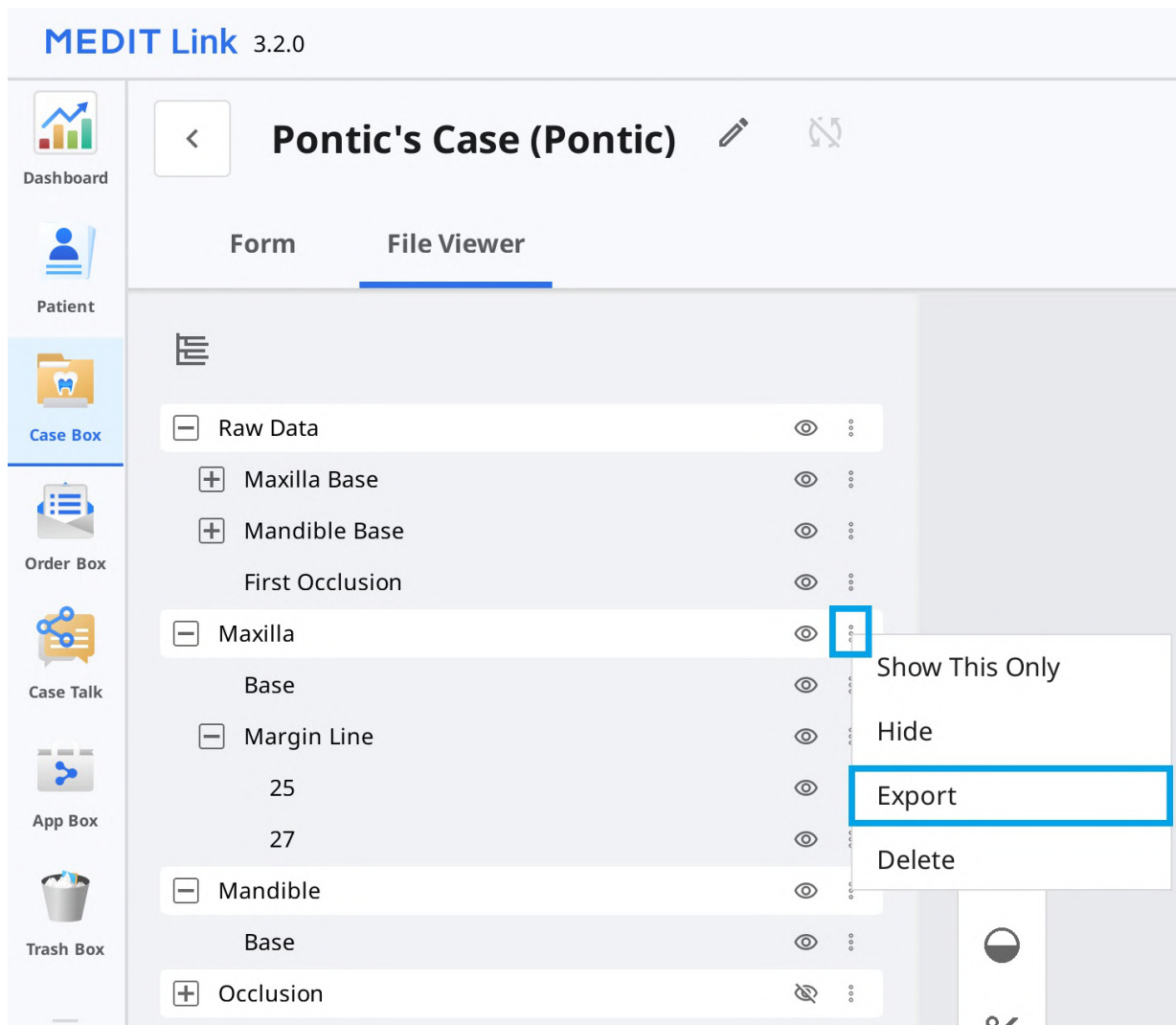

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 点击打开列表中的某份病例。
3. 点击“文件浏览器”标签中数据树里数据组或任一实体对象旁边的三点图标。



4. 随后，点击“导出”。

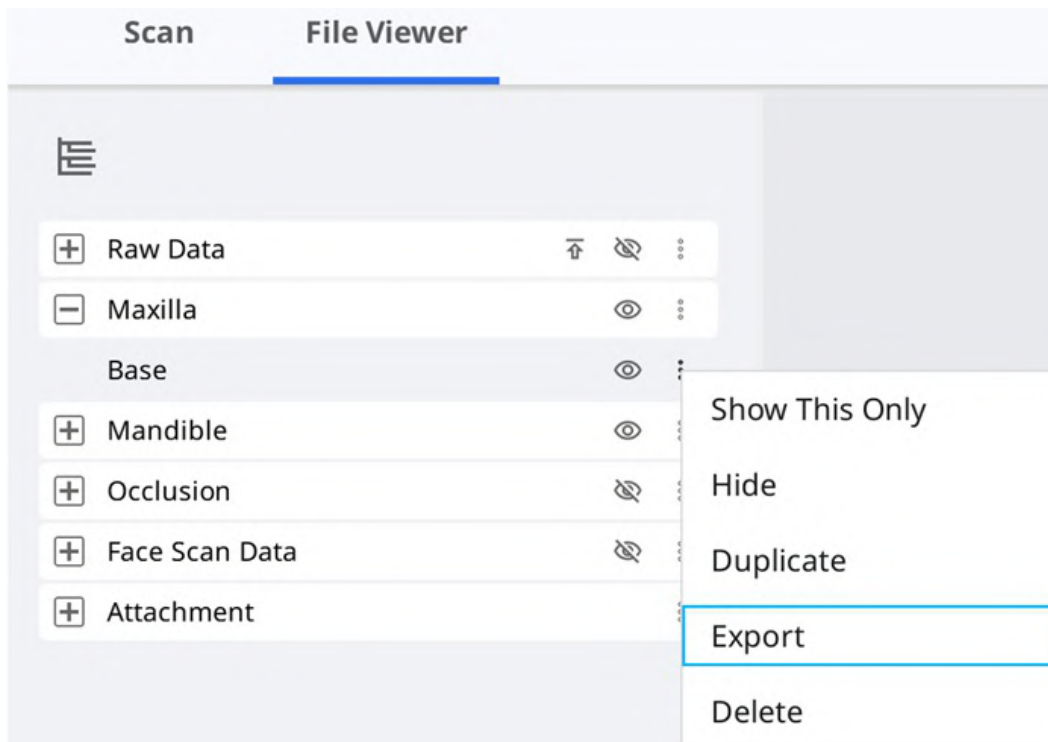

5. 设置目标文件夹、文件名、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

Export files in case

Options **File List**

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ **PLY**
 ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ **PNG**
 ☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

6. 您可以看到“文件列表”只选中了您在数据树中所选择的文件。

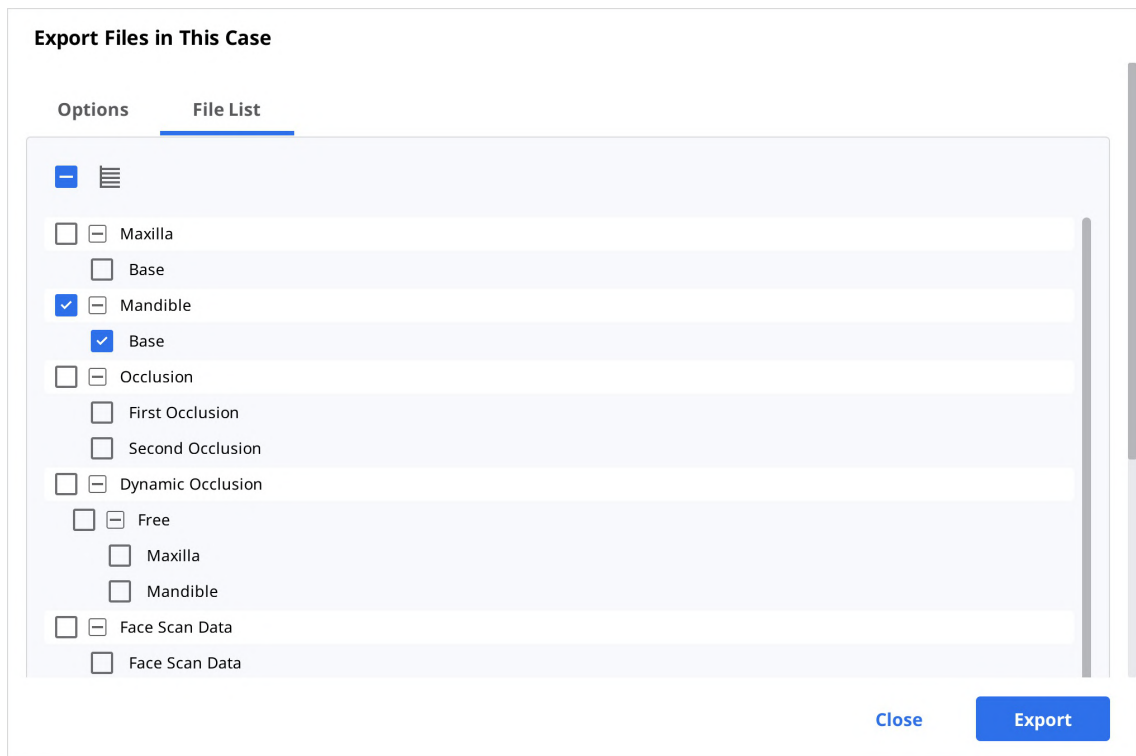

7. 点击“导出”。
8. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

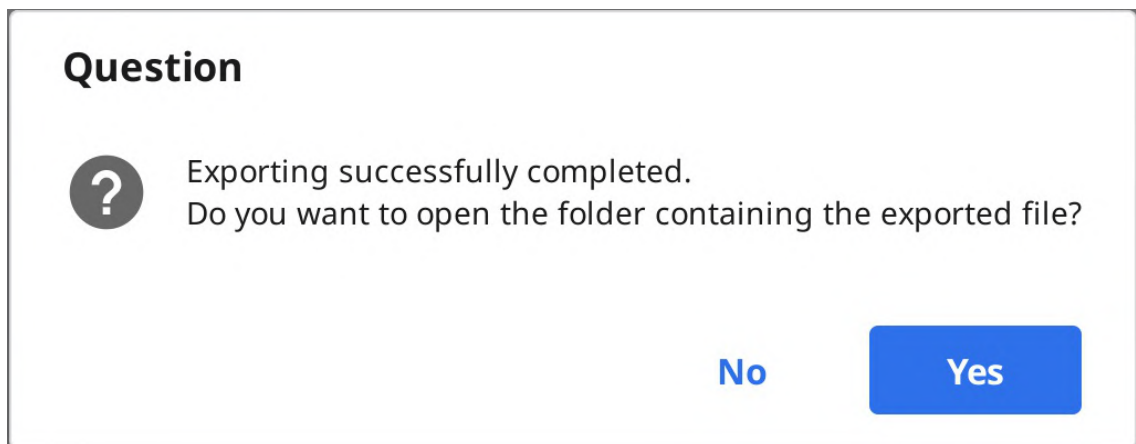


将病例列表导出为CSV格式


Medit Link可提供将病例列表导出为CSV格式的功能。

您可导出带有基本信息的病例列表并轻松管理病例。

1. 前往“病例库”、“订单管理”、“收件箱”或“技工病例库”。
2. 选择您想导出的病例。

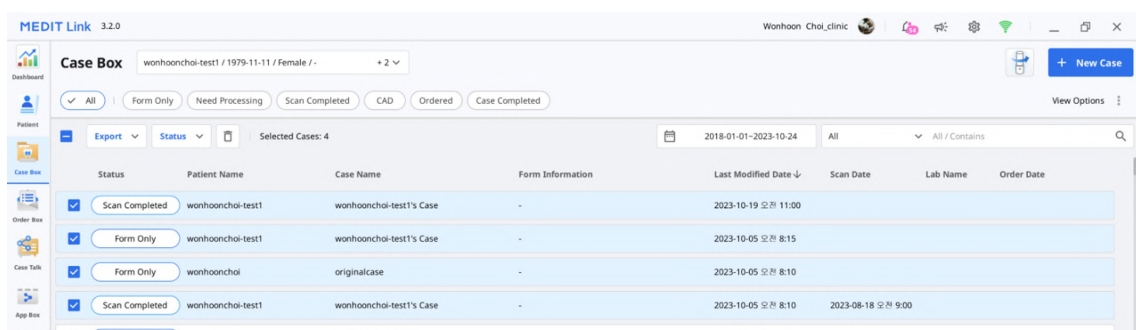

3. 点击“导出”并选择“病例列表(如图所示)”或“病例列表(包含所有项目)”。

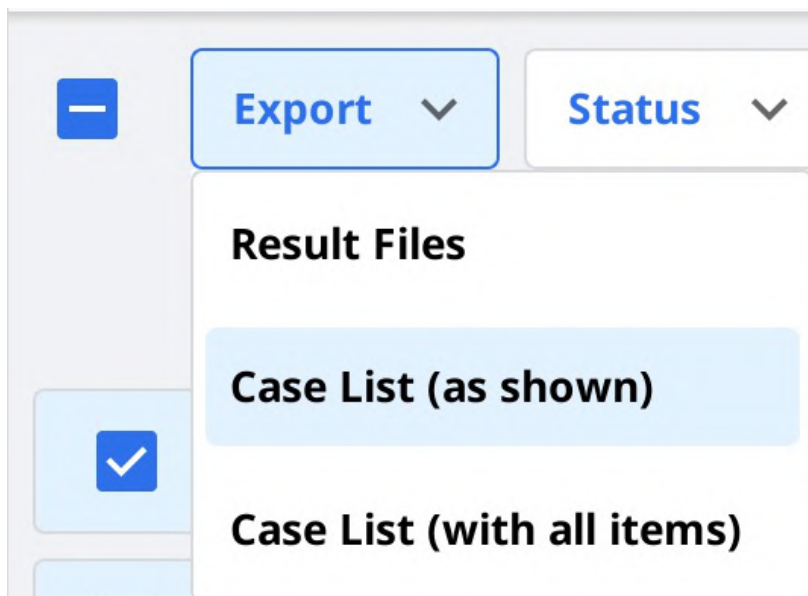

🔍 注意：

病例列表(如图所示): 导出带有屏幕上当前所显示的项目的病例列表。前往“视图选项” > “表头”来根据您的需要显示或隐藏相应的项目。

病例列表(包含所有项目): 导出带有所有项目的病例列表, 包括状态、病例名称、出生日期、表格信息、最后修改日期、扫描日期、订购日期及实验室名称。

4. 指定路径及文件名, 然后保存列表。
5. 病例列表将保存为CSV文件。


导出边缘线

Medit Scan for Clinics可提供创建边缘线的功能, 而Medit Link则可将边缘线转换到CAD程序中。

将边缘线导出为颜色

一般而言, Medit Link会将边缘线转换为相应的颜色并会将上颌或下颌与结果一同导出。您可以参考颜色信息从而在其CAD中创建边缘线。

示例:

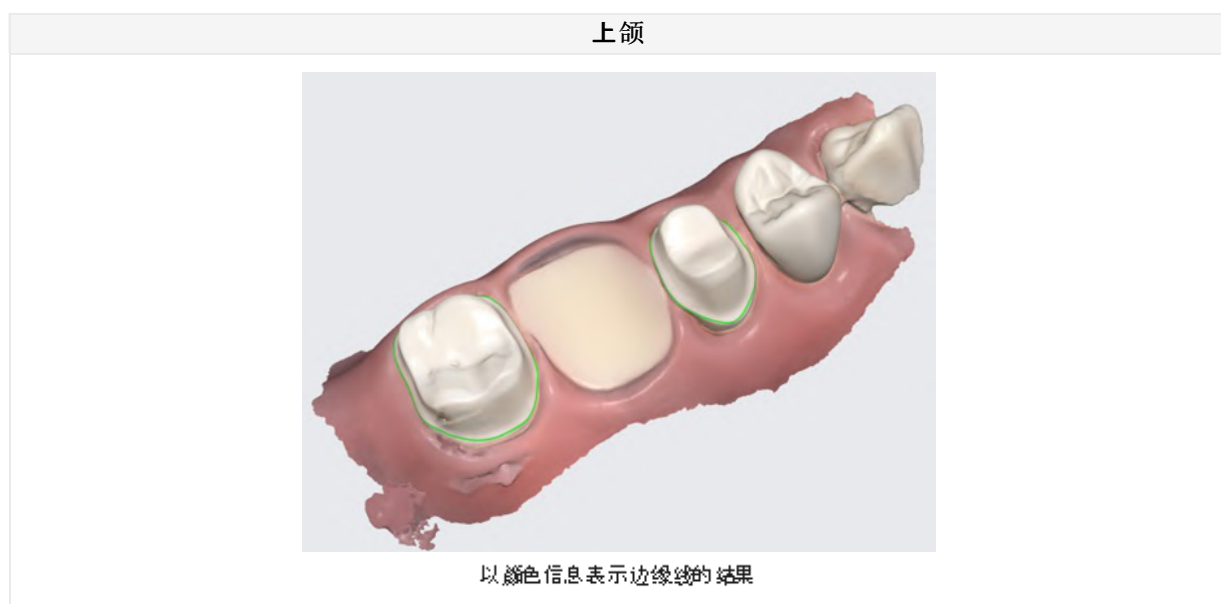

注意：

该功能适用于包含诸如meditMesh、OBJ、PLY等颜色信息的格式。边缘线不会转换为STL格式。

注意：


“类型” > “3Shape”不支持该功能。

将边缘线导出为文件

在exocad病例中，Medit Link可将边缘线导出为“~margin.xyz”格式以使其能够直接被导入到exocad中。

无需任何其它操作，您便可以在exocad中使用该文件。

示例：

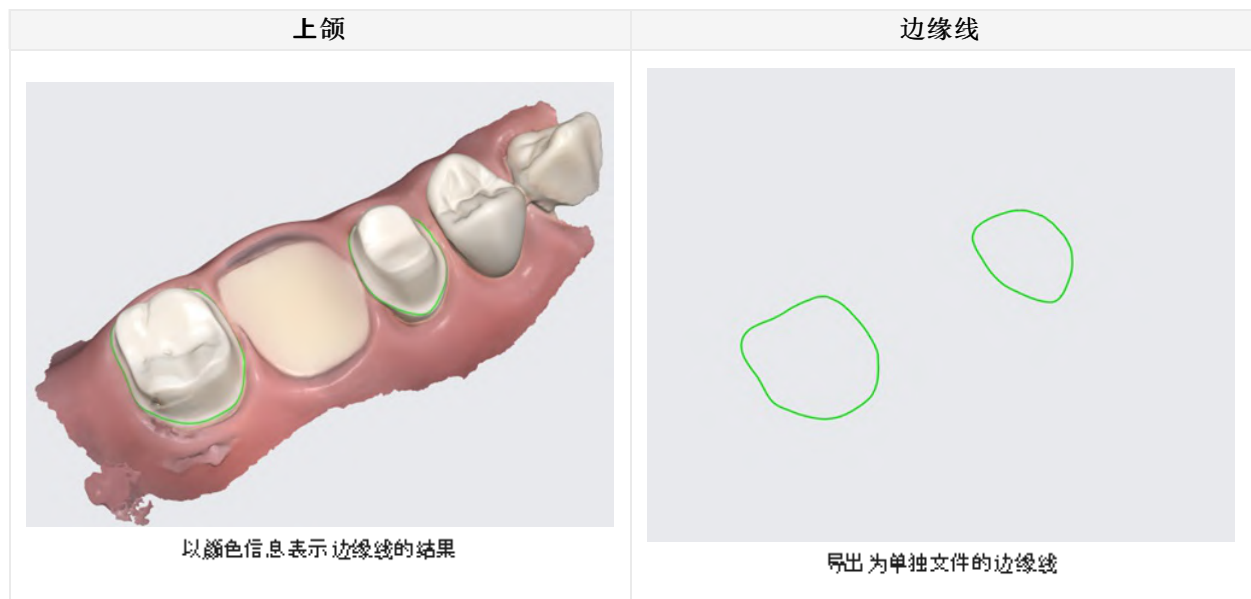

从Medit Link网页端下载文件

Medit Link可提供下载功能。

如想在不安装Medit Link应用程序的情况下获取结果文件，您可从Medit Link网页端来下载文件。

注意：


如想从网页端下载文件，数据应先被上传到Medit的云存储空间上。

可在Medit Link网页端的下列菜单中使用下载功能。

- 病例库
- 技工病例库
- 网络浏览器

病例库/技工病例库


您可以在右上角找到“下载”按钮。

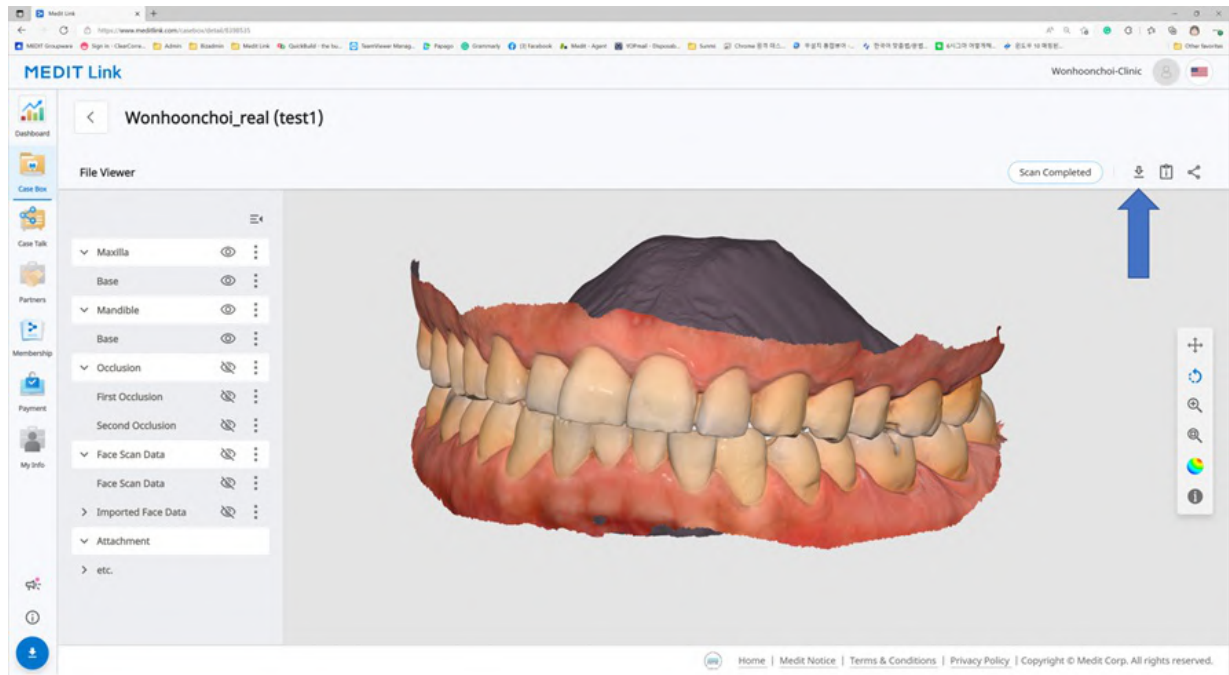


网络浏览器

当您使用“病例分享”共享病例时，您可以设置是否允许下载。

如您勾选“大下载权限”选项并共享病例，那么所有链接至共享连接的用户便均可下载相应文件。

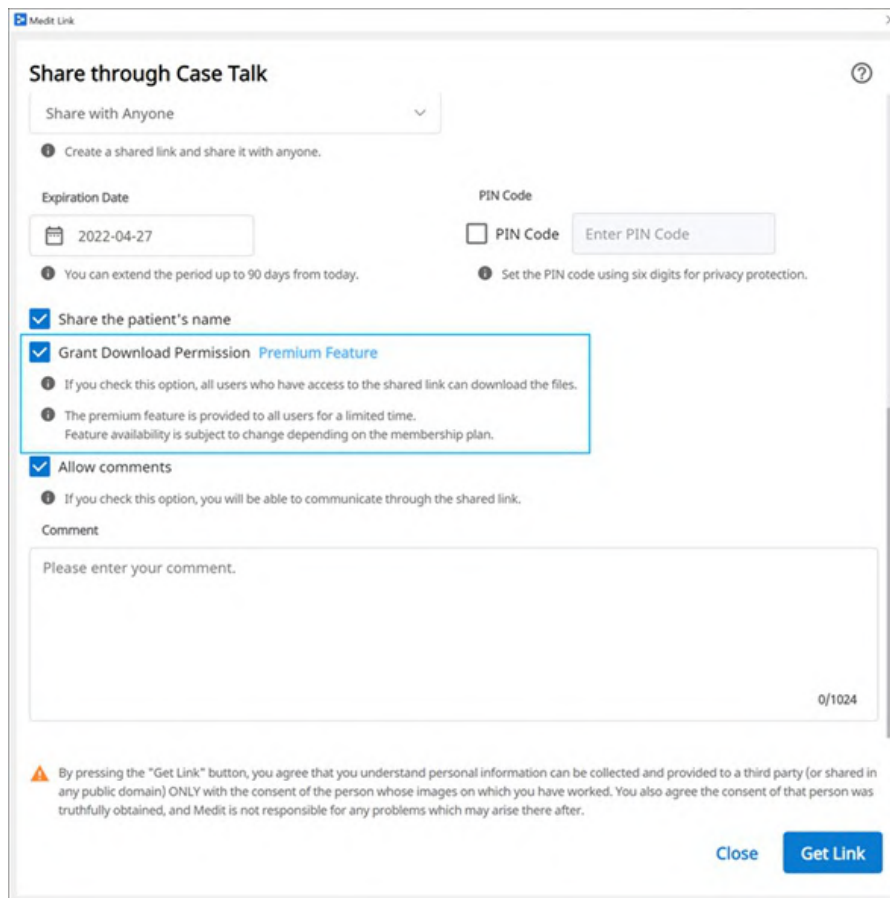


您可在“网络浏览器”页面的右上角找到“下载”图标。

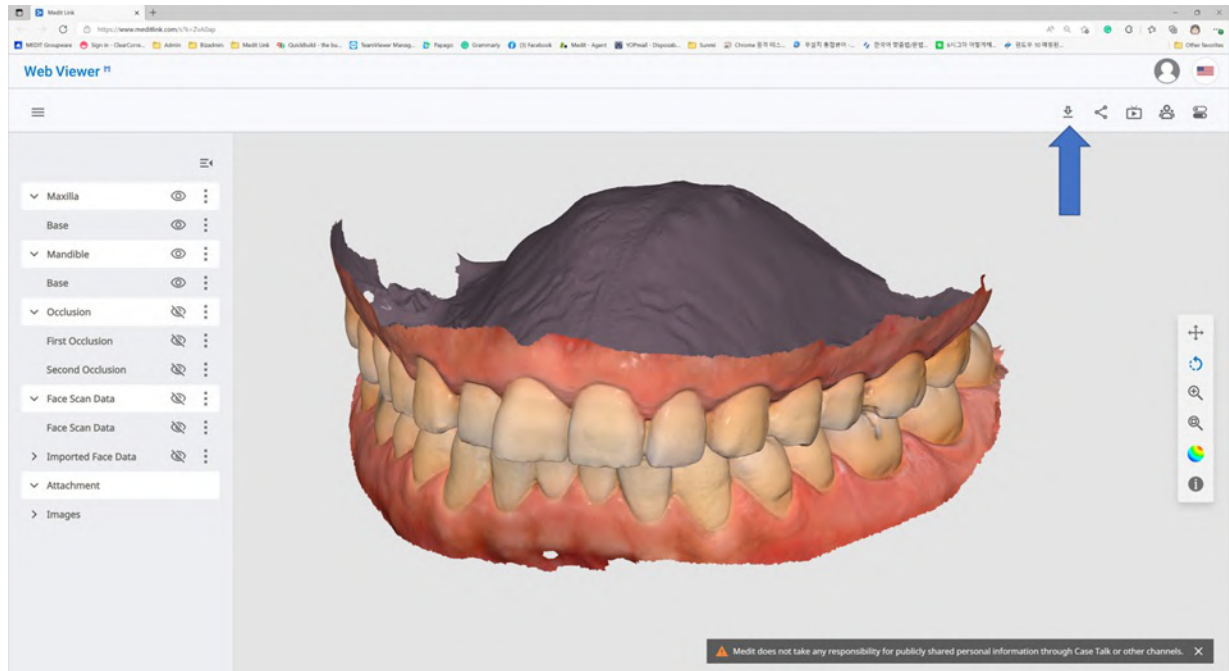

1. 点击“下载”。



2. 从下载对话框中选择网格格式。

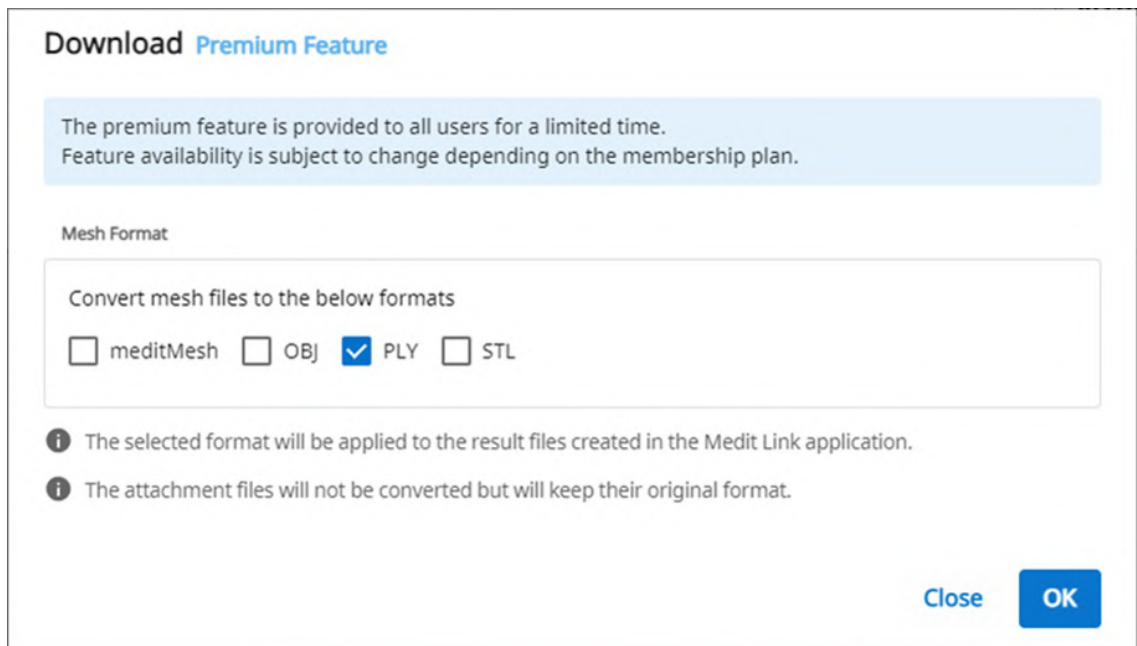

3. 随后，点击“OK”即可。

订购/管理病例

您可以通过从连接程序所获取的数据及由用户所附加的数据来轻松地订购病例。

订购病例

您可以在“病例库”中向您的合作伙伴下订单。

1. 点击“订单”按钮。
2. 查看您的订单所需的信息。

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order


Cancel

OK

3. 选择一个合作伙伴。
4. 从“订单列表”标签中查看产品信息。
 - 您可选择是否共享患者的姓名。
5. 从“文件列表”标签中查看要订购的文件。
6. 输入您所需的交货日期。
 - 默认值为订购日期后的7天。
7. 您可以向您的合作伙伴添加备忘录及标签以描述一些具体的细节问题。
8. 当扫描App生成了多个咬合结果时，您可通过勾选“订购所有咬合关系”来一次性发送所有咬合结果。
9. 进行您的订购。


确认订单(收件箱)

- 收到订单时直接接受。
- 已接受的订单将转至技工病例库。

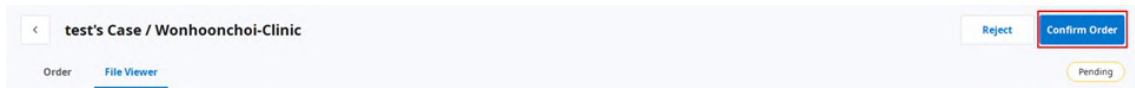


取消订单(订单管理)

- 您可以在您的合作伙伴接受前取消订单。
- 取消的病例可以被重新订购。

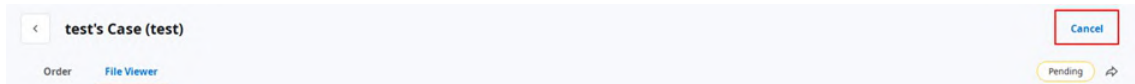


拒绝订单(收件箱)

- 您可以拒绝所收到的订单。
- 拒绝的病例可以被重新订购。

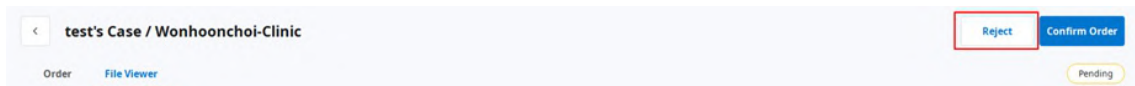

查看已订购的病例

您可以从诊所账号的“订单管理”中查看您已订购病例的详情。您也可以从实验室账号的“收件箱”中查看所收到的病例。

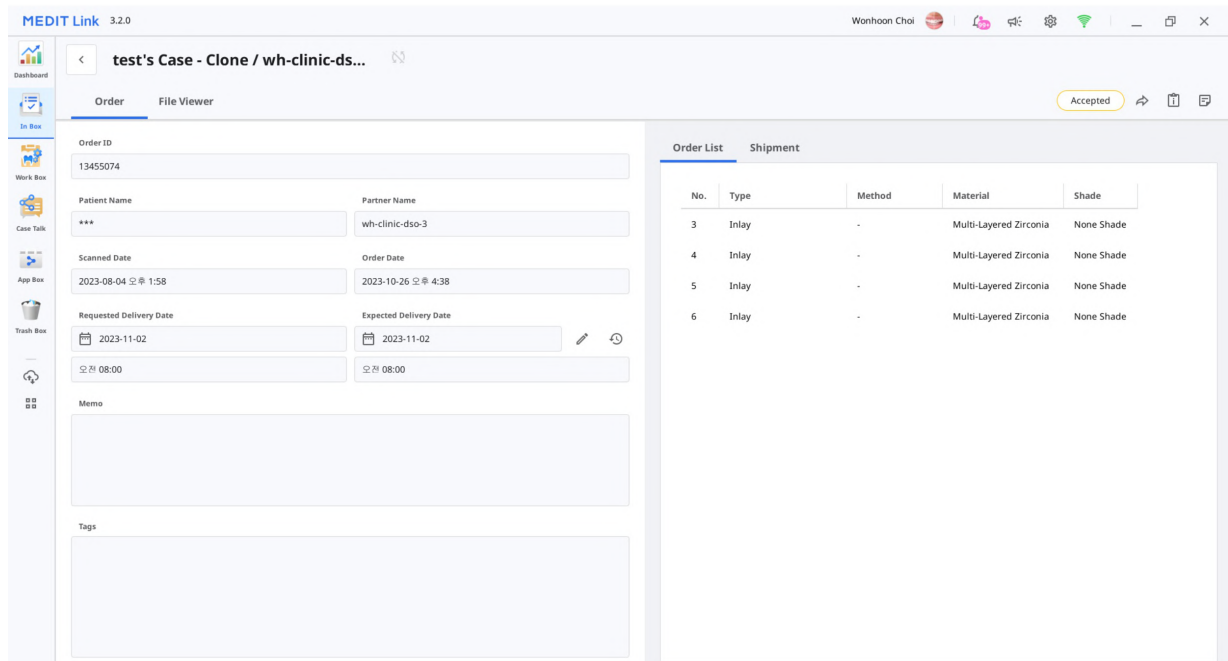

订单信息	订单中可包含的信息如下所示: 订单ID/患者姓名/账户名称/扫描日期/订购日期/交货日期/交货截止日期/备忘录。 您可以查看已订购产品及交货信息的详情。
订单列表	订单列表可显示已订购产品的详细信息。
配送	可输入/查看配送信息。

输入配送信息(收件箱)

可输入已完成病例的配送信息并开始配送。

1. 点击“配送”标签。
2. 输入配送信息并点击“注册”。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 所输入的信息将随即被发送给您的合作伙伴。

管理交货日期

您可以在下单时设置预计交货日期, 并且该信息将被发送给您的合作伙伴。

设置“要求交货日期”(诊所账号)

- 当从“病例库”订购时, 您可以输入“要求交货日期”。

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 默认值为订购日期之后的7天。
- 输入您想要收到产品的日期/时间并进行订购。
- 您可以使用滑杆条来轻松设置时间。

设置“预计交货日期”(实验室账户)

- 您可以从“收件箱”对所订购的病例输入“预计交货日期”。

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0


Total KRW 0

1. 查看合作伙伴的要求交货日期并使用“编辑”按钮来重新安排时间。



2. 根据实际的工作日来输入“预计交货日期”。您也可以在必要时进行留言。

3. 点击“应用”。

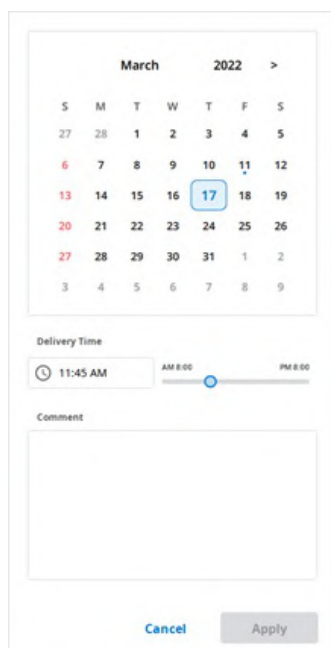

4. 预计交货日期与备忘录将连同订单被一并发送。
- 您可以在“订单管理”查看日期及备忘录。
 - 您可以更改“预计交货日期”，更改后的信息将被发送给您的合作伙伴。
5. 您可以使用“历史”按钮来查看病例历史。



完成病例

完成(技工病例库/收件箱)


在所有任务结束后，按下“完成”即可完成对病例的操作。

从“病例详情”页面“完成”病例操作

您可以在“打开”或“重新扫描”按钮的右侧找到三点图标。




通过点击图标并选择“完成”即可完成操作。

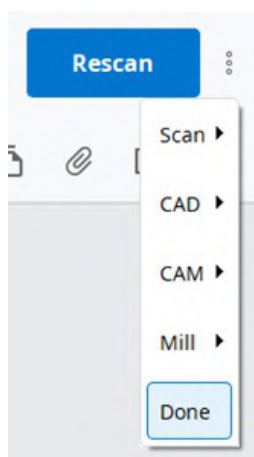

从“病例列表”中完成对多个病例的操作

1. 前往“技工病例库”。
2. 选择要完成的所有病例。

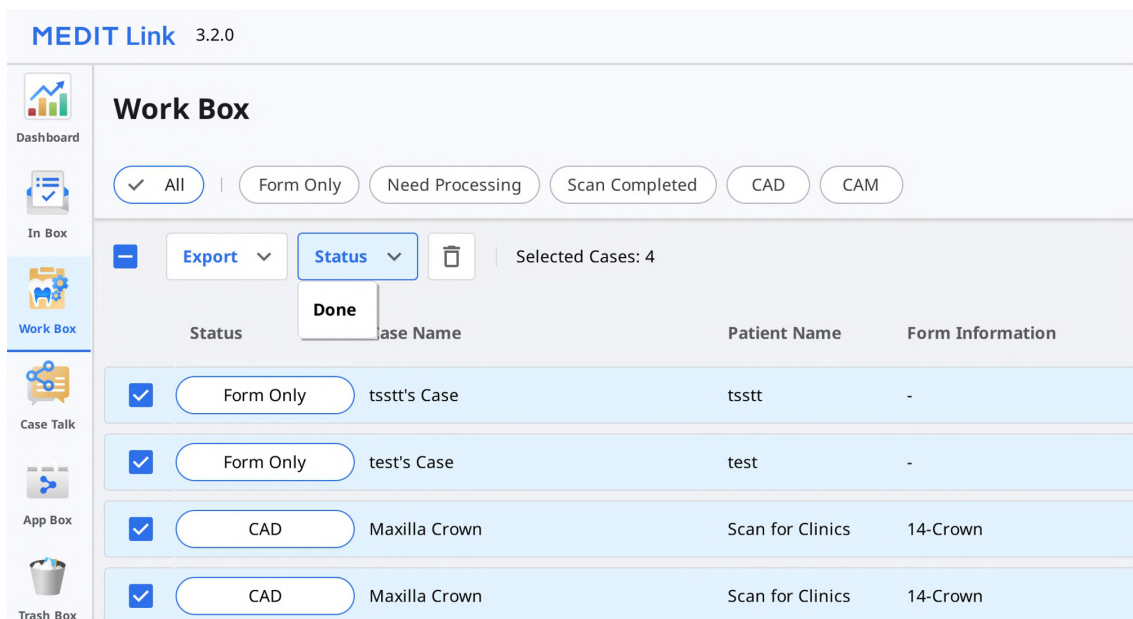


3. 点击“状态”并选择“已完成”。

完成(病例库/订单管理)

当实验室完成对病例的操作后，诊所需做对病例做出确认以结束整个订购流程。

诊所可以在实验室完成其操作后在“订单管理”中找到“确认交货”按钮。

点击该按钮，整个订购流程便将随之结束并且病例状态也将变为“病例已完成”。

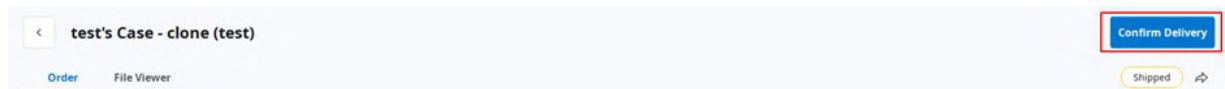

在“病例库”中结束对未订购病例的操作

对于未向实验室订购的病例，您可以在“病例库”中结束相关操作。

1. 前往“病例库”。
2. 选择您想完成操作的病例。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. 点击“状态”并选择“病例已完成”。

运用标签来交流

您可以使用标签来为您的病例添加附加信息并将其发送给您的合作伙伴。

在创建新病例时添加标签

您可以在您创建新病例或编辑病例信息时输入标签。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

您可以轻松搜索并选择您之前使用过的标签。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

在订购时添加标签

您可以在订购时从“订单”对话框中查看并编辑标签。

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

查看病例详情上的标签

