

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

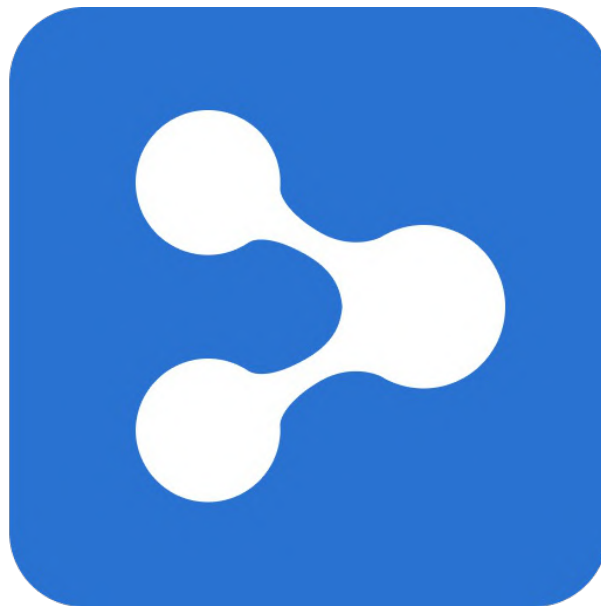


Table of Contents

Medit Link

Introduktion	7
Medit Link	7
Tjänsteöversikt	7
Molntjänst	8
Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem	9

Medit Link > Installation

Systemkrav	10
Systemkrav för Windows	10
Systemkrav för macOS	10
Systemkrav för webbtjänst	10
Rekommenderade webbläsare	10
Lägsta krav för mobila enheter	10
Installation på Windows	11
Installation på macOS	14

Medit Link > Kom igång

Registrera & logga in	18
Medit Links webbsida	18
Registrera dig	18
Inloggning och välkomstsida	21

Medit Link > Medit Links webbsida

Dashboard	24
Översikt över dashboard	24
Medit Insights	24
Prenumerera på Medit Insights	25
Avsluta prenumerationen på Medit Insights	26
Patient	27
Sök patient	27
Case Box/Work Box	28
Fallfiltrering	28
Filtrering enligt patient	28
Filtrering enligt status	31
Filtrera enligt tidslängd	31
Filtrering enligt sökning	32
Falldetaljer	32
Order Box/In Box	34
Beställningsuppgifter	34
Tabbar i Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Skapa en Case Talk	35
Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ	36
Case Talk-detaljer	38
Web Viewer	39
Anteckning	40
Kommentarer	42

Skärmdelning i realtid	42
Dataträd	42
Kontroller för dataträd	42
3D-modellkontroll	43
Partners	45
Sök efter partners	45
Min partnerlista	45
Partnerinbjudan	46
Membership	47
Medlemskap	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Molnlagring	49
Prenumerera	49
Avbryt prenumeration	51
Min prenumeration	52
Detaljer	53
Skapa ny prenumeration	53
Så lägger du till en betalningsmetod	54
Så ändrar du betalningsmetod	55
Utnyttja	55
Detaljer	56
Registrera inlösenkod	56
Aktivera inlösenkod	57
Betalningsuppgifter	57
Visa faktureringsinformation	58
My Info	60
Mitt konto	60
Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)	60
Min skanner	61
Annan meny	63
Notifiera & uppdatera	63
Relaterade webbplatser	63
Ladda ner Medit Link-appen	64
 Medit Link > Medit Link-appen	
Översikt	65
Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.	65
Titelfält	66
Min information	66
Aviseringar	66
Notifiering & uppdatera	67
Inställningar	67
Nätverksstatus	68
Inställningar	70
Allmänt	70
Lagringshantering	71
Ställ in period	72
Lokal lagring	72
Molnlagring	72
Ställ in anslutna program	73
Exporteringsalternativ	73
Fallkonverteringsverktyg	75

Exportera fall	76
Importerera fall	77
Proxyalternativ	79
Om	79
Användarguide	80
Meny	81
Dashboard	81
Patient	81
Lägg till ny patient	82
Radera patient	82
Sammanfoga patienter	83
Case Box/Work Box	83
Tabbar i Case Box/Work Box	84
Funktioner i Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Tabbar i Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Allt	87
Medit Apps	87
Nedladdat	88
Trash Box	88
Fallsynkroniseringsansvarig	89
Ladda upp	89
Ladda ner	90
Relaterade webbplatser	90
Filvisning	92
Dataträd	92
Modellkontrollverktyg	92
3D-modellkontroll	92
2D-bildkontroll	94
Funktionsverktyg	94
Skärminspelning och memo	94
Orto-inspelning	95
Fyll hål	96
Trimning	97
Optimera ocklusionsinriktning	99
Underkäkesrörelse	102
Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning	102
Så hanterar du flera resultat	102
Visa alternativ	104
Statusfilter	104
Visningstyp	105
Gruppering	105
Sortering	105
Filtrering och Sök	107
Filtrering enligt patient	107
Filtrering enligt datum	108
Avancerade sökfunktioner	109
Medit Link > Arbetsflöde	
Skapa/Redigera/Klona/Radera fall	110

Skapa fall	110
Skapa fall i Case Box (Klinik)	110
Skapa fall i Work Box (Labb)	111
Redigera fall	111
Skapa fall i Case Box (Klinik)	111
Redigera fall i Work Box (Labb)	112
Klona fall	113
Klona fall i Case Box (Klinik)	113
Klona fall i Work Box (Labb)	113
Radera fall	114
Radera fall (Klinik och Labb)	114
Forminformation	115
Registrering av forminformation i Case Box	115
Gå in på fliken Form	115
Registrering av forminformation i Work Box	115
Gå in på fliken Form	115
Lägg till tänder till en brygga	115
Inställning av skanningsalternativ	116
Medit Scan for Labs	116
Allmänna alternativ	116
Alternativ enligt tänder	116
Lägg till i Favoriter	116
Lägg till i Favoriter	117
Hantera favoritmallar	117
Jobba med skanning/CAD	118
Skanningsprocess	118
CAD-process	118
Använda tilläggsappar	118
Snabbstartaren som tilläggsapp	118
Hantering av appstarter	118
Snabbstartaren	119
Alla appar	119
Hämta resultatfiler	120
Exportera skanningsresultatfiler	120
Exportera resultatfiler från fallista	121
Exportera resultatfiler från Filvisning	123
Exportera resultatfiler från dataträd	125
Exportera fallista som CSV	128
Exportera marginallinjen	129
Exportera marginallinjen i färg	129
Exportera marginallinjen i färg	130
Ladda ner filer från Medit Links webbsida	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Beställ/Hantera fall	134
Beställa fall	134
Bekräfta beställning (In Box)	135
Avbryt beställning (Order Box)	135
Avvisa beställning (In Box)	135
Kontrollera beställda fall	135
Ange fraktinformation (In Box)	136
Hantera leveransdatum	136

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)	136
Inställning av förväntat leveransdatum (labbkonto)§	137
Slutföra fall	138
Slutfört (Work Box/In Box)	138
Slutför ett fall i falldetaljer	138
Slutför flera fall i fallistan	139
Slutfört (Case Box/Order Box)	139
Slutför att fall som inte beställts i Case Box	139
Kommunicera med hjälp av taggar	141
Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall	141
Lägg till taggar vid beställning	142
Kontrollera taggar på Falldetaljer	142

Introduktion

Medit Link

Medit Link är ett samarbetsverktyg utformat för att underlätta kommunikation mellan kliniker och labb för att tillhandahålla optimerade arbetsflöden för alla parter.

Det tillhandahåller differentierade funktioner baserat på typen och behörigheterna för varje konto. Programmet har ett användarvänligt användargränssnitt för hantering av arbetsflödet, från skanning med orala och modellskannrar och fallbeställning till design och prototillverkning.

Medit Link utgörs av en webbtjänst och en datorapplikation.

Tjänsteöversikt

		Web	App
		• Registrera och hantera kontot • Sök och hantera partners • Dela fall via Web Viewer med en delningsbar länk • Kom åt fall skapade i appen • Hantera beställningar	• Ange forminformation • Skanna • Hantera beställningar • Länka med CAD • Hantera patienter
Klinik	Admin	Sök och hantera partners och dina kliniker och dela fall. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna, gör beställningar och hantera patienter. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Medlem	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Lab	Admin	Sök och hantera partners och ditt labb och dela fall. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna och hantera beställningar. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Medlem	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Molntjänst

Medit Link stöder automatisk uppladdning/nedladdning av databaser och filer via AWS (Amazon Web Services).

Data som sparas i molnet synkroniseras automatiskt till andra datorer i organisationen så att alla användare kan komma åt samma data från vilken dator som helst när som helst. Molnbaserad säkerhetskopiering och återställning håller all din data säker. Det håller dina data säkra även i händelse av dataförlust på grund av plötsligt datorfel.

Med molntjänsten kan tandläkare och laboratorier som samarbetar snabbt dela data och slippa skicka e-post eller manuellt överföra skanningarna. All data, inklusive patientinformation, är säkert krypterad, lagrad och överförd. Medit följer medicinska lagar och förordningar som HIPAA och GDPR.

Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem

Medit Link tillhandahåller ett eget beställningssystem.

- Med Medit Link kan användare upprätta partnerskap mellan tandläkare och tandlaboratorier och dela data snabbt och enkelt.
- Du kan kontrollera och hantera beställningsstatus.

Systemkrav



Kontrollera systemkraven för Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs om du vill använda skanningsmjukvaran med din skanner.

Systemkrav för Windows

	Laptop & Skrivbord
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz eller högre
RAM	16 GB eller högre
Grafik	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) eller högre/eller motsvarande AMD-videokort
OS	Windows 10 64 Bit (inte tillgängligt i 32 Bit) eller högre

Systemkrav för macOS

	Mac
Processor	M1 med 8-kärnig, 7-kärnig GPU, 16-kärnig Neural Engine
RAM	16 GB eller högre
OS	Monterey 12 eller högre

Systemkrav för webbtjänst

Rekommenderade webbläsare

	Webbläsare
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Lägsta krav för mobila enheter

	Android	iOS
Enhet	Motsvarande till Galaxy S7 eller högre	Motsvarande till iPhone 7 eller högre
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB eller högre	2 GB eller högre
AP	Över Snapdragon 710	A10 Fusion

Installation på Windows

Medit Link är installerat som ett paket med skanningsprogrammen Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs.


1. Kör Medit_LinkSetup.exe.
2. Välj språk för installationen.
3. Välj mappen där du vill installera Medit Link. Vänligen läs och godkänn licensvillkoren och klicka på "INSTALLERA".

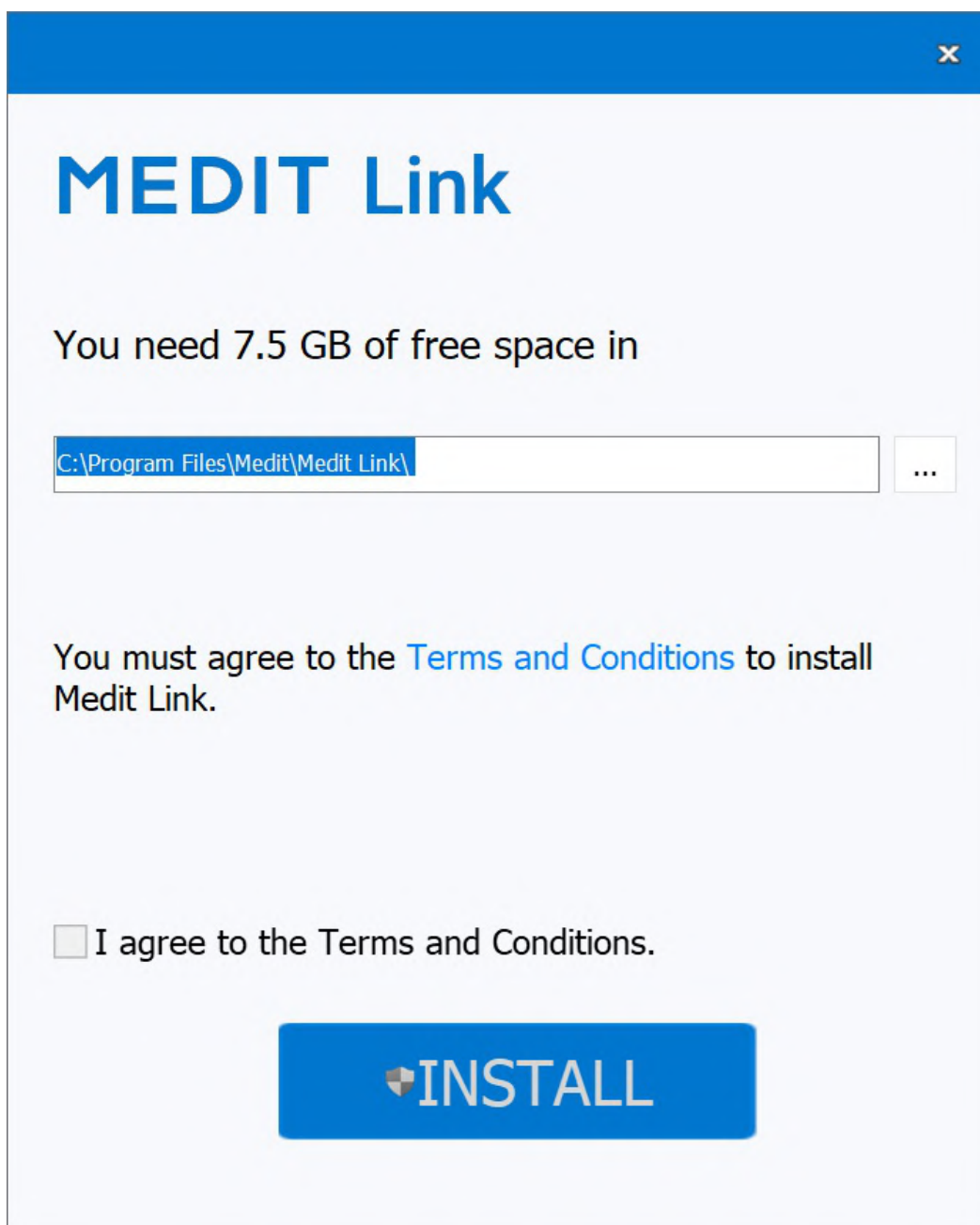

4. Se till att skannerkabeln är bortkopplad från datorn innan du går vidare till nästa steg. Installationen kanske inte startar om skannern är ansluten till din dator.
5. Programmet installeras automatiskt. Detta kan ta några minuter. Stäng inte av eller koppla ur datorn förrän installationen är klar.



6. Starta om datorn när installationen är slutförd. Du kan gå vidare utan att starta om datorn om du inte har skannern.

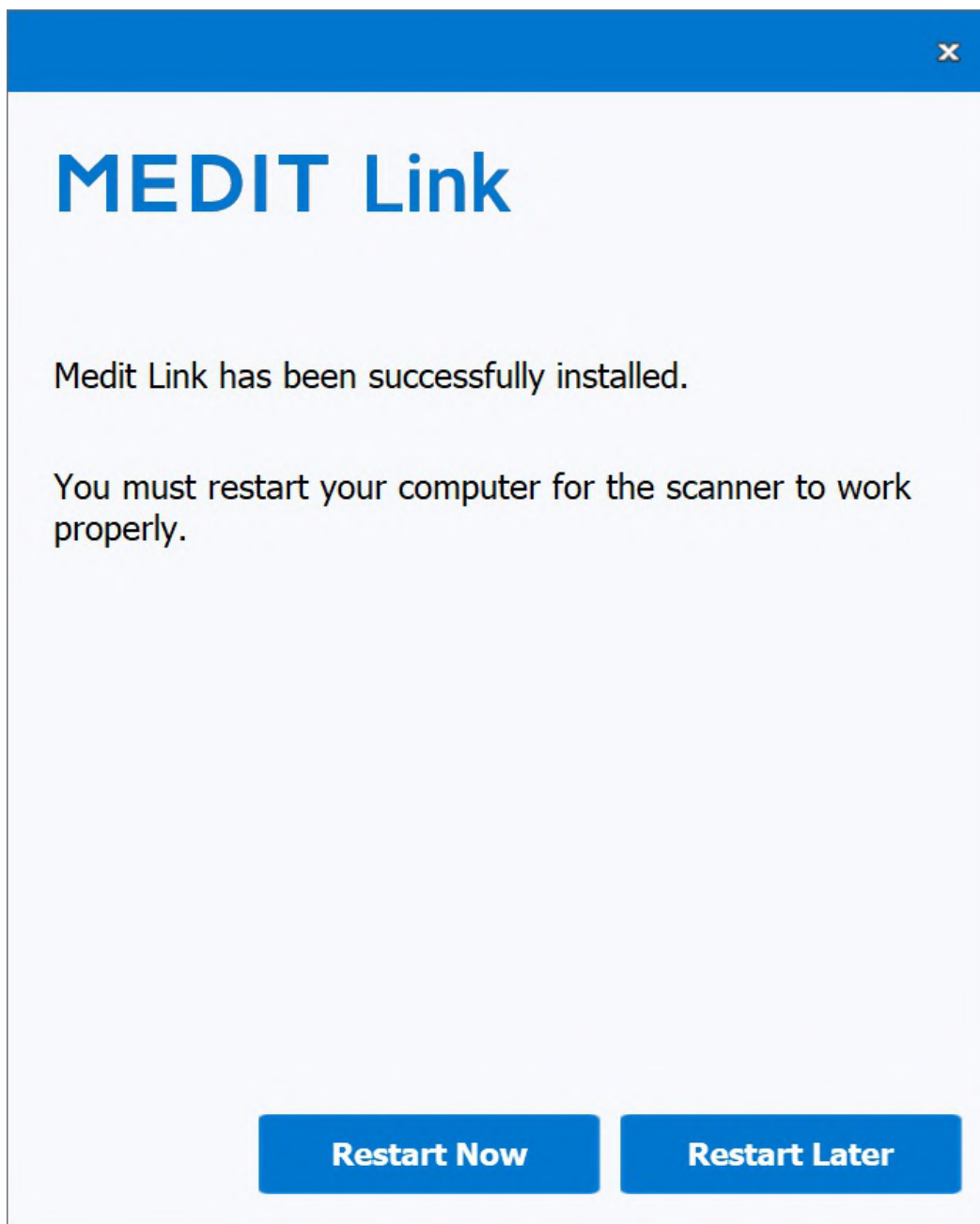


Obs

Om du inte startar om datorn efter att installationen är slutförd kan det hända att skannern inte fungerar korrekt.


Installation på macOS

Medit Link är installerat som ett paket tillsammans med Medit Scan for Clinics.


1. Kör Medit_Link_x.x.x.pkg och klicka på "Fortsätt".

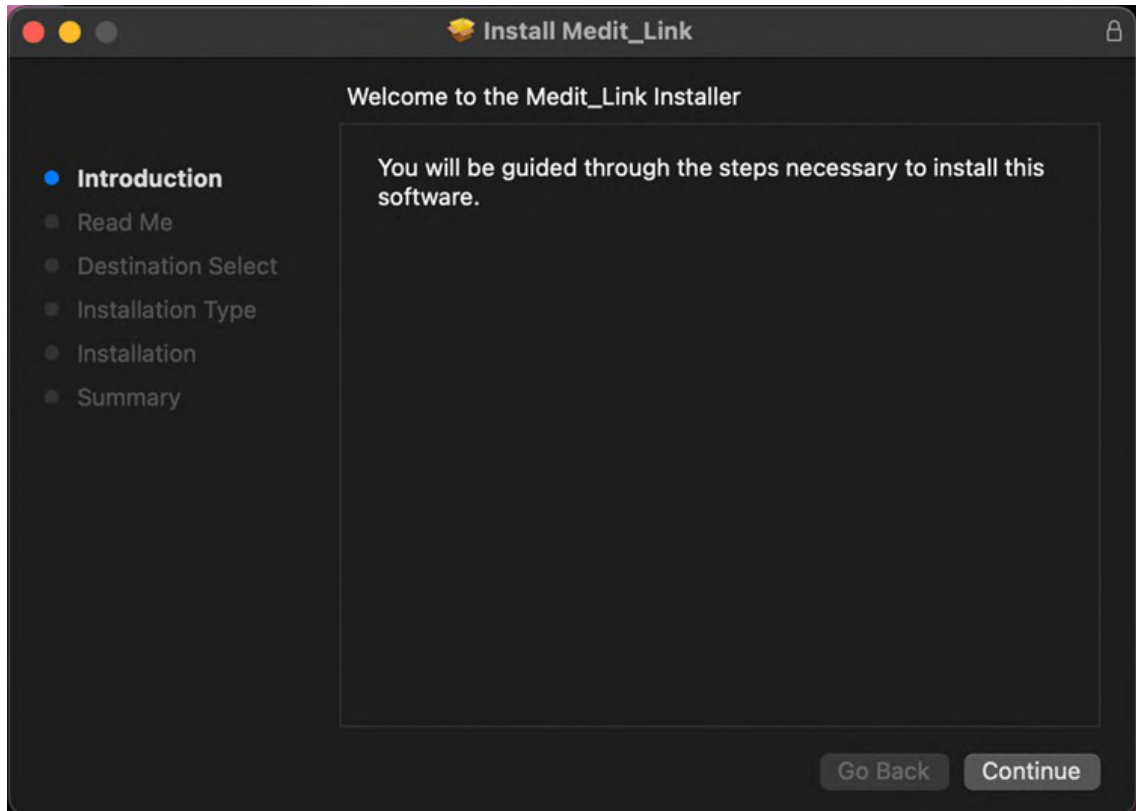


2. Läs slutanvändarlicensavtalet och klicka på "Fortsätt".

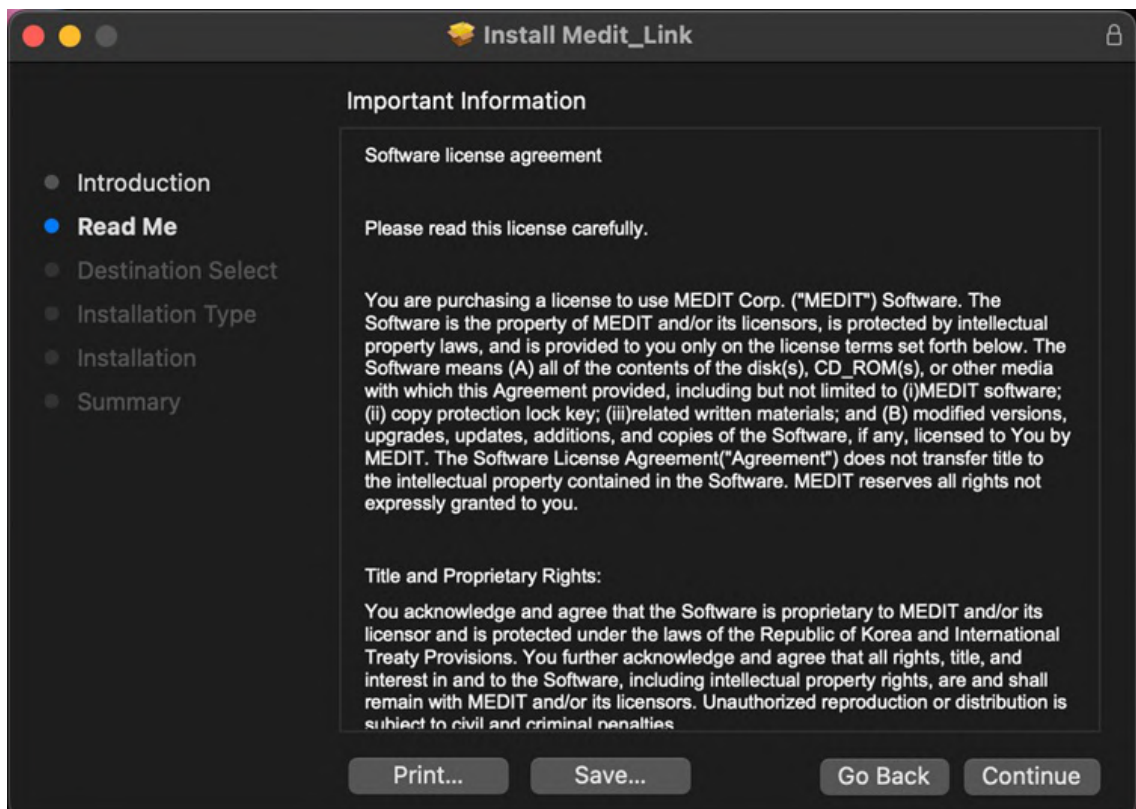


3. Välj skivan som ska installeras och klicka på "Fortsätt".

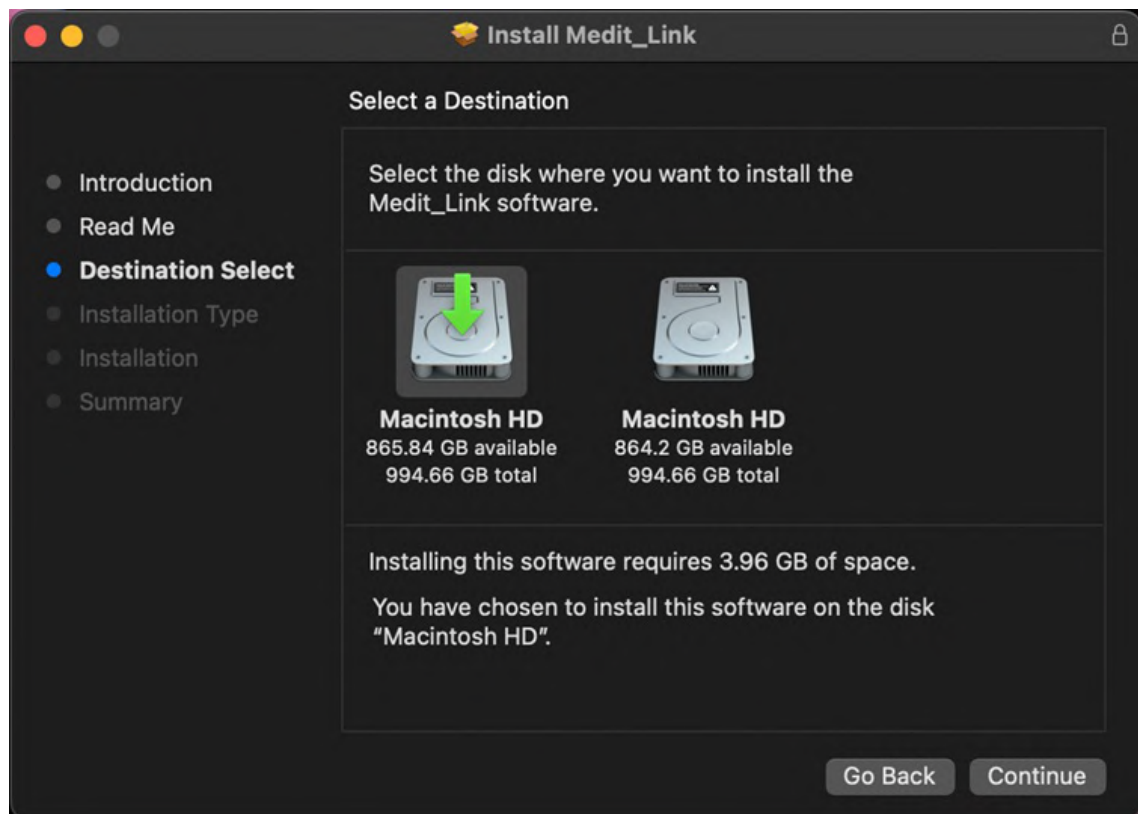


4. Klicka på "Ändra installationsplats..." för att ändra platsen för installationen.

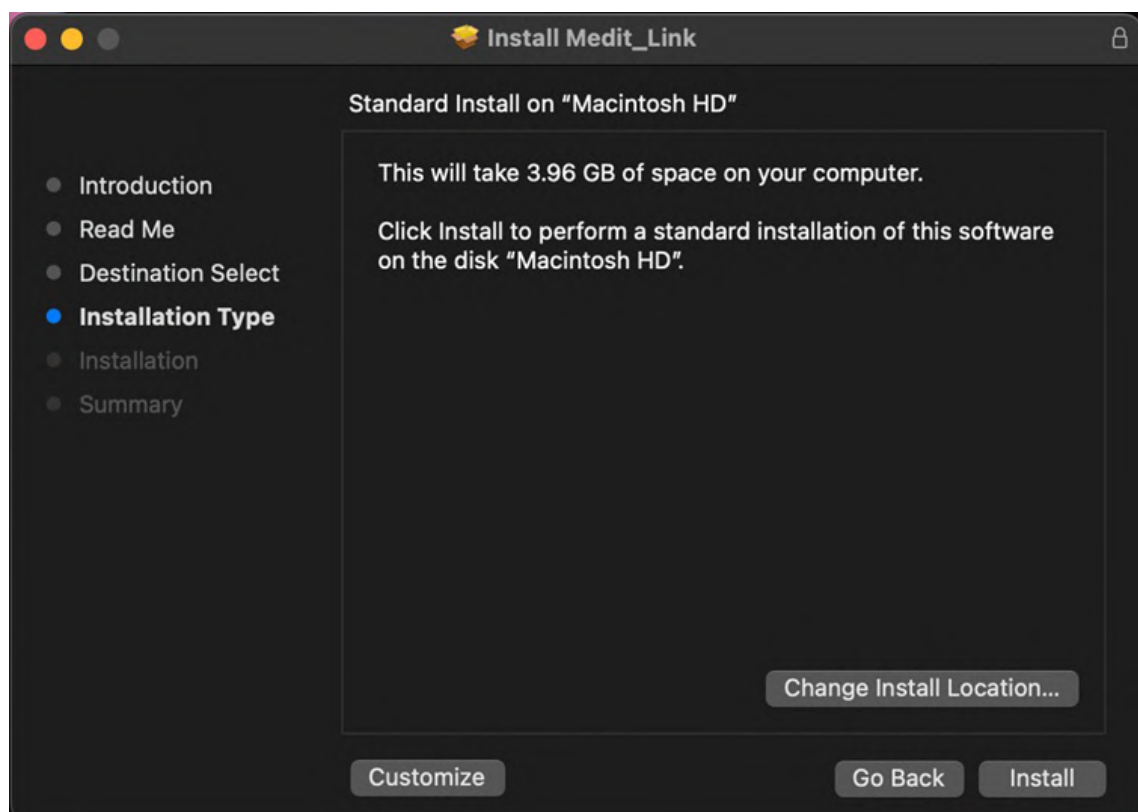


5. Klicka på "Installera" och skriv in ditt Mac-lösenord för att tillåta installation om detta krävs.

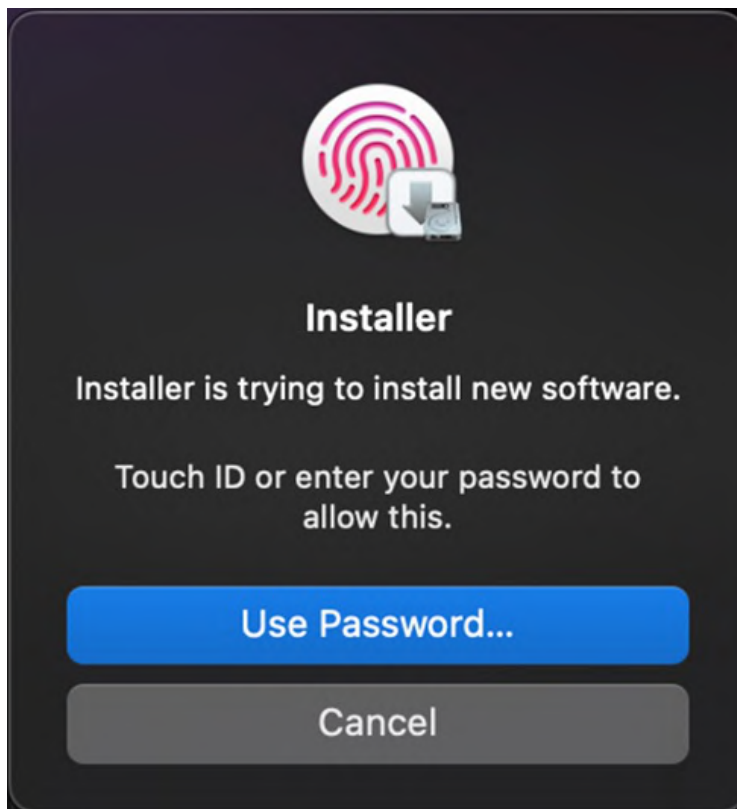

6. Vänta tills installationen är klar.

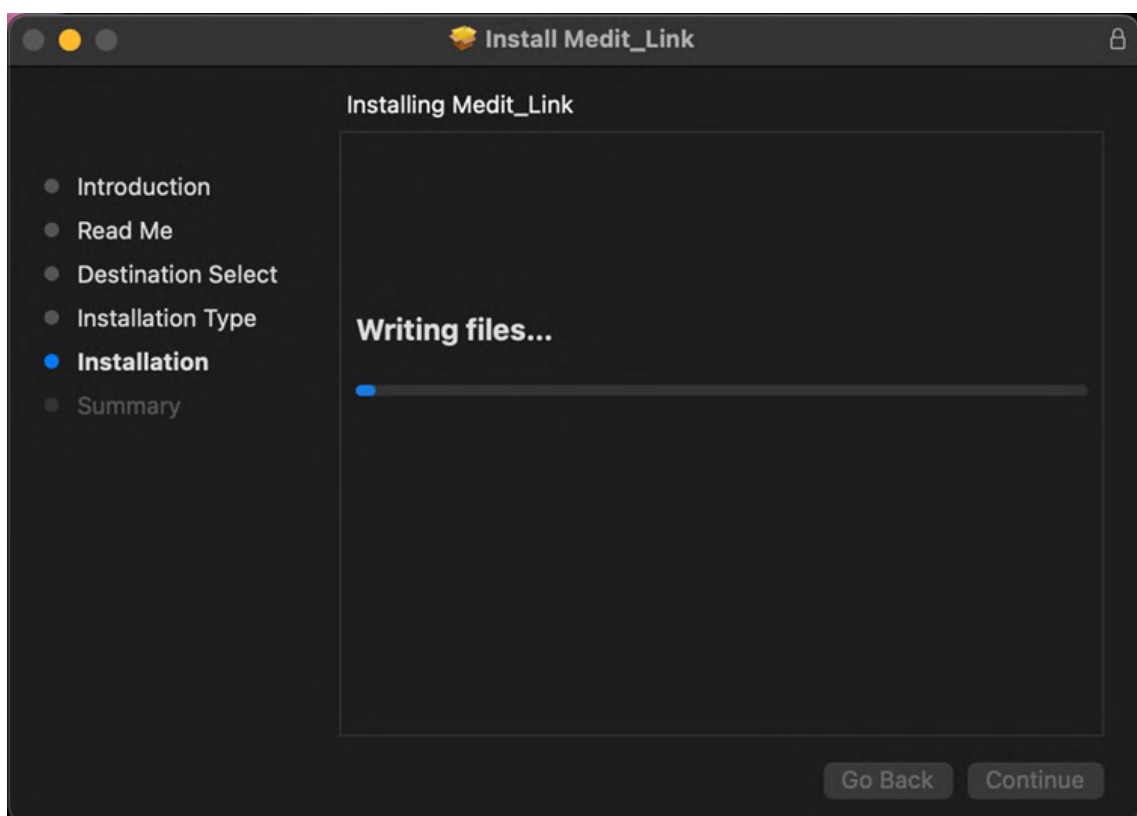


7. Klicka på "Stäng" för att stänga installationsfönstret.

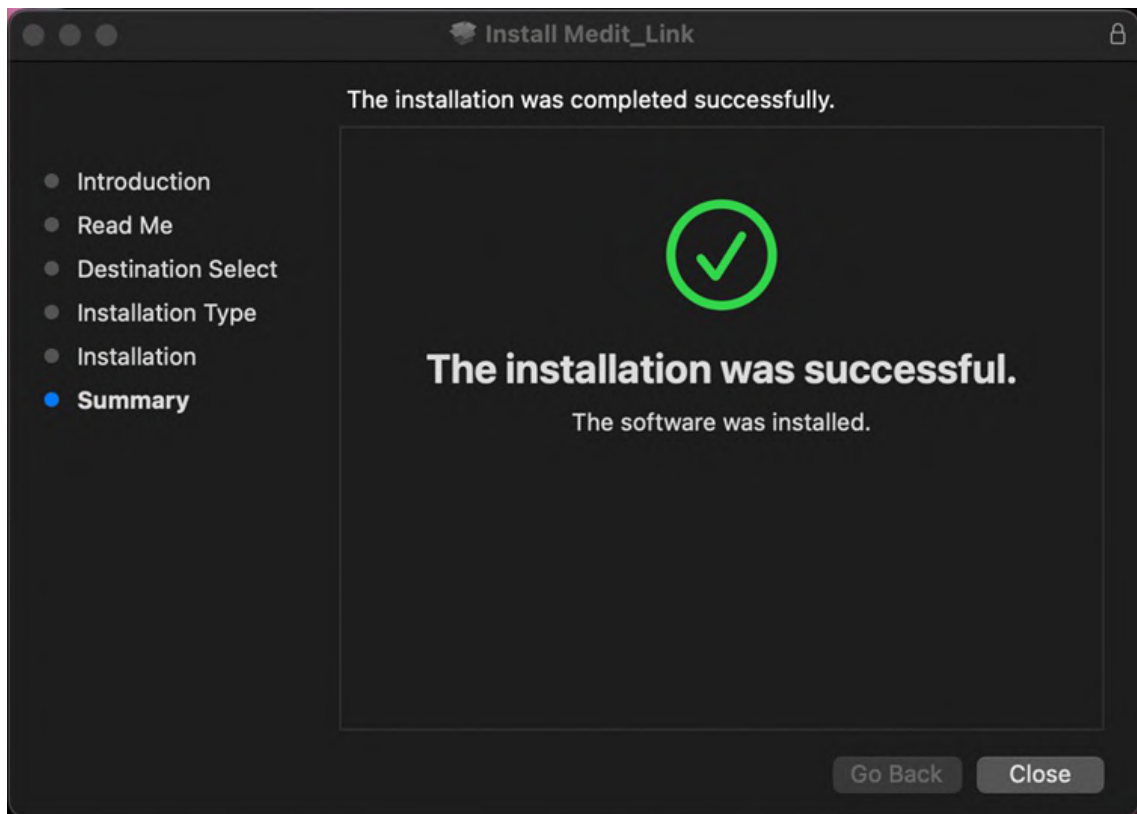

Registrera & logga in

Medit Links webbsida

Registrera dig för Medit Links tjänst på www.meditlink.com.

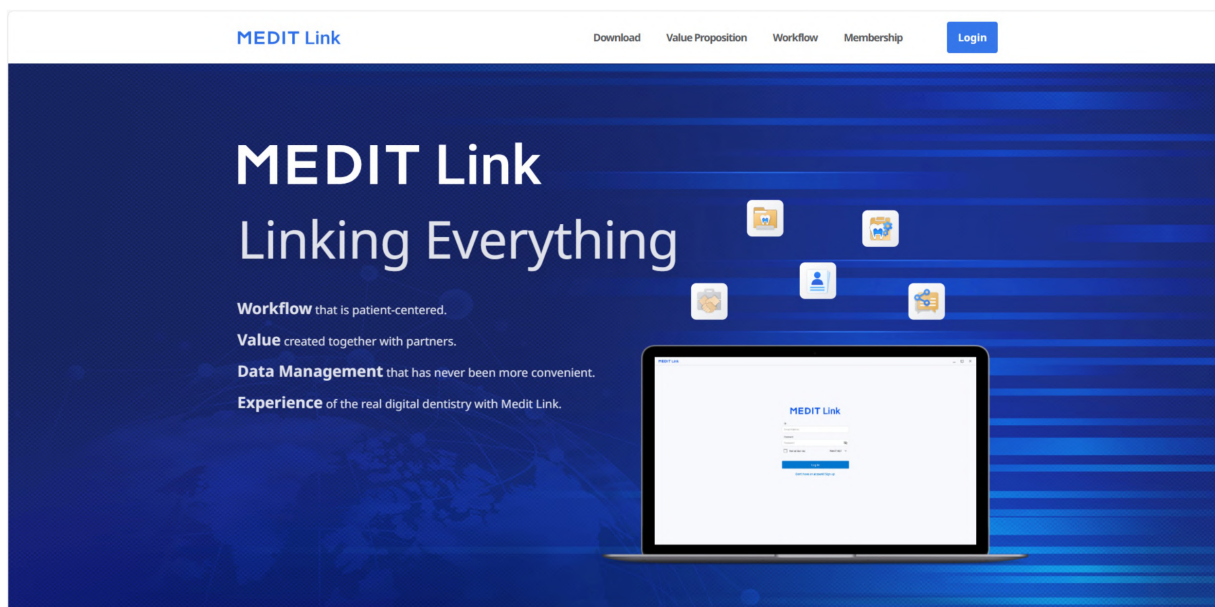

Registrera dig på Medit Link China på www.meditlink.cn.

Registrera dig

För att använda Medit Links tjänst måste du registrera dig för att få ett konto. När du har skapat ett klinik- eller labbkonto kan du använda funktionerna i Medit Link.

Användare kan välja en av följande fyra kontotyper för att registrera sig för medlemskap och använda tjänsten med fullständiga eller begränsade funktioner och privilegier, beroende på kontotyp.

- Klinik - Admin
- Klinik - Medlem
- Labb – Admin
- Labb - Medlem

Administratören är vanligtvis en representant för din organisation som har full tillgång till alla Medit Links funktioner och tjänster. Medlemskontot har däremot begränsad åtkomst.

Följ dessa steg för att registrera ett medlemskap:

1. Klicka på "Har du inte ett konto ännu? Registrera dig." på inloggningssidan.

MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. När du har läst de tillhandahållna beskrivningarna, klicka på knappen "Registrera" för den kontotyp du önskar.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

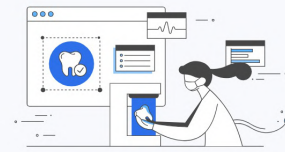

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Följande registreringsformulär visas.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

View

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Ange kliniken eller labbets namn och gör sedan följande, beroende på önskad kontotyp:
 - Om du registrerar dig som administratör, klicka på "Kontrollera tillgänglighet" för att se om det angivna namnet är tillgängligt.
 - Om du registrerar dig som medlem, klicka på "Sök". Administratören måste redan registrera din organisation innan du registrerar dig.
5. Fyll i resten av registreringsformuläret och klicka på "Registrera".

Obs

Om du samtycker till att få marknadsföringsinformation vid registreringen kommer Medit att skicka dig användbar information om produkten och tjänsten.

6. Ett verifieringsmail kommer att skickas till dig.
7. För att slutföra registreringsprocessen, verifiera din e-postadress med hjälp av den mottagna länken.

Inloggning och välkomstsida

1. Ange din e-postadress och ditt lösenord på inloggningssidan och klicka på "Logga in".

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Följande pop-up-fönster visas om du inte har fyllt i din företagsinformation.

Welcome, stage-test-wh!

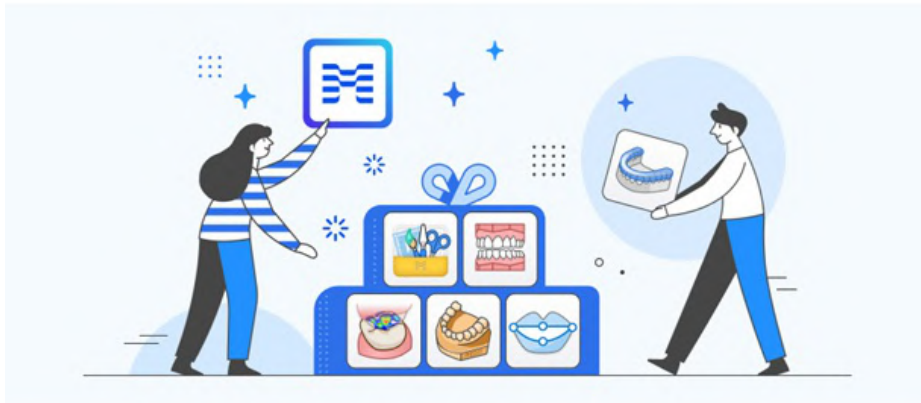

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Obs


För att använda Medit Links tjänster måste du ange information om din klinik eller labb via administratörskontot.

3. Klicka på knappen "Gå till min klinik" eller "Gå till mitt labb" och ange klinik- eller labbinformation, inklusive företagsnamn, omslags-/loggbilder, tjänster du erbjuder, kontorsadress, telefonnummer etc.
4. Du kan när som helst redigera informationen som du skriver in på välkomstsidan på My info > Min klinik eller fliken Mitt labb på Medit Link Web.

Dashboard

Översikt över dashboard

Du kan se statistiken för allt arbete som gjorts i Medit Link i visualiserade grafer och diagram - både i Medit Link-appen och på webben.

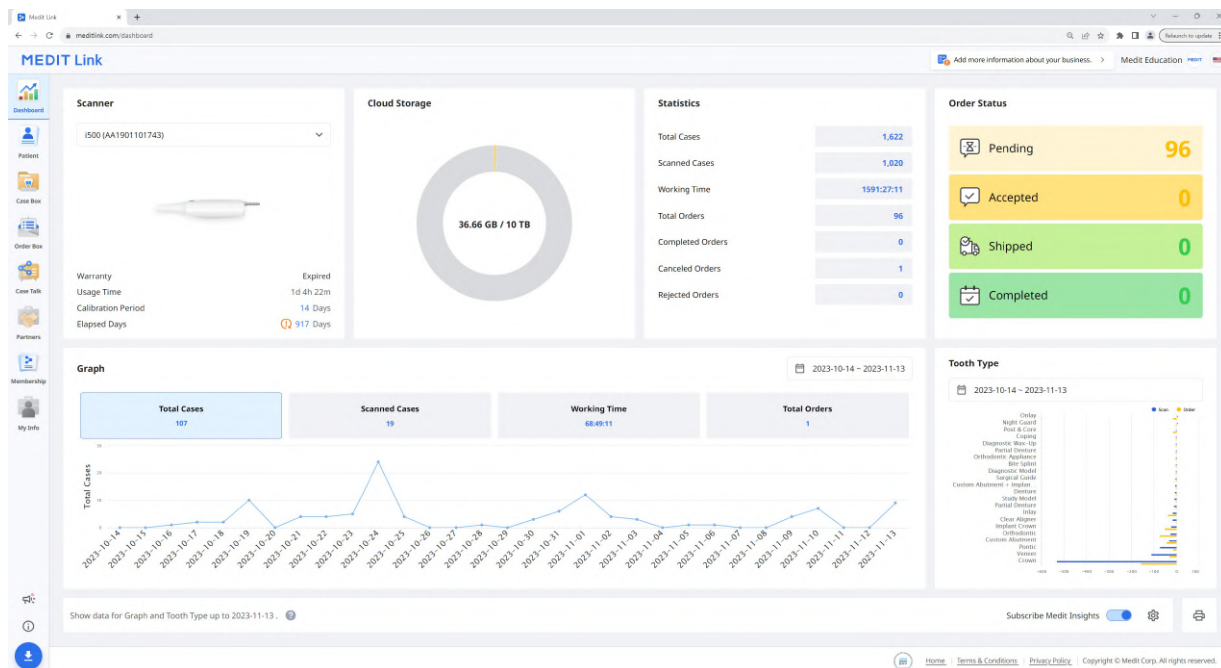

Grafer och diagram i instrumentpanelen visar statistik för allt arbete som gjorts i Medit Link.

Skanner	Visar information om aktiva skannrar, inklusive garanti, skannerns användningstid, kalibreringsintervall och total kalibreringstid.
Molnlagring	Visar molnets totala kapacitet och mängden som används.
Statistik	Visar fallstatistik enligt jobbstatus.
Beställningsstatus	Visar fallstatistik enligt beställningsstatus.
Graf	Graf över jobbinformation per period.
Tandtyp	Visar statistik över antalet skanningar och beställningar enligt behandlingsinformation.


Medit Insights

Medit Insights är en rapporttjänst som hjälper dig att analysera din användningsstatistik.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Medit Insights

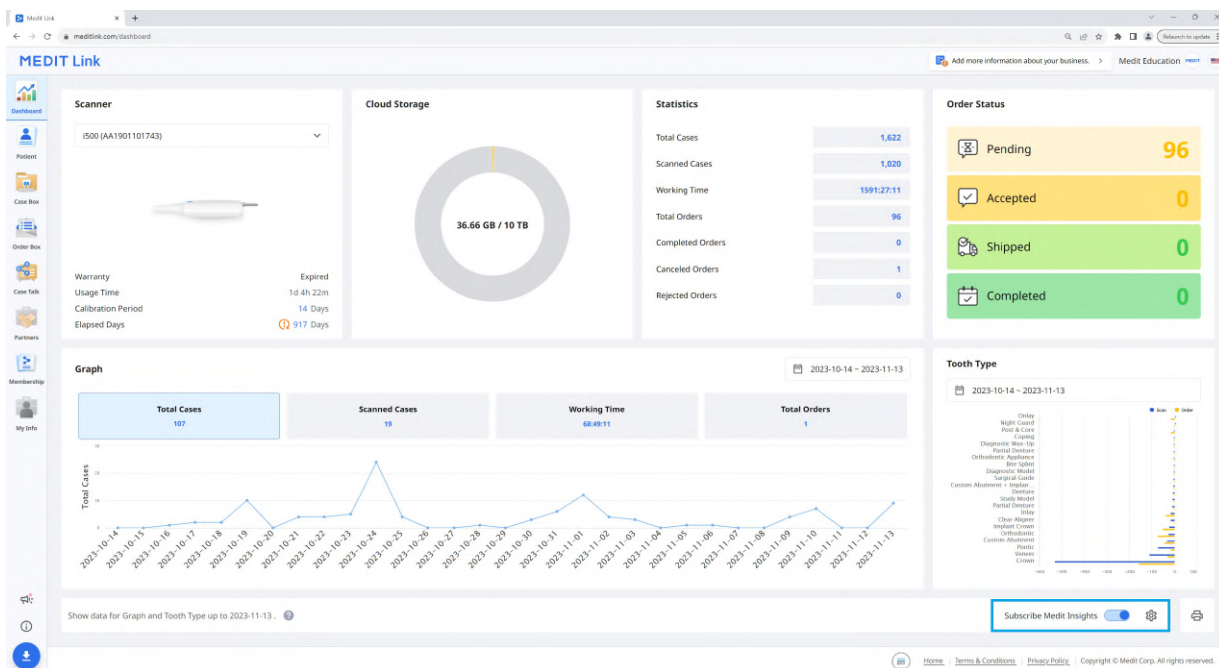

Prenumerera på Medit Insights

Du kan få en rapport via e-post den andra dagen i varje månad. Ingen ytterligare registreringsprocess krävs. Aktivera bara "Prenumerera på Medit Insights".

Om du inte använder e-postadressen du använt för Medit Link-kontot kan du registrera en annan e-postadress för att ta emot Medit Insights.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Den andra i varje månad får du ett e-postmeddelande med statistik enligt nedan.

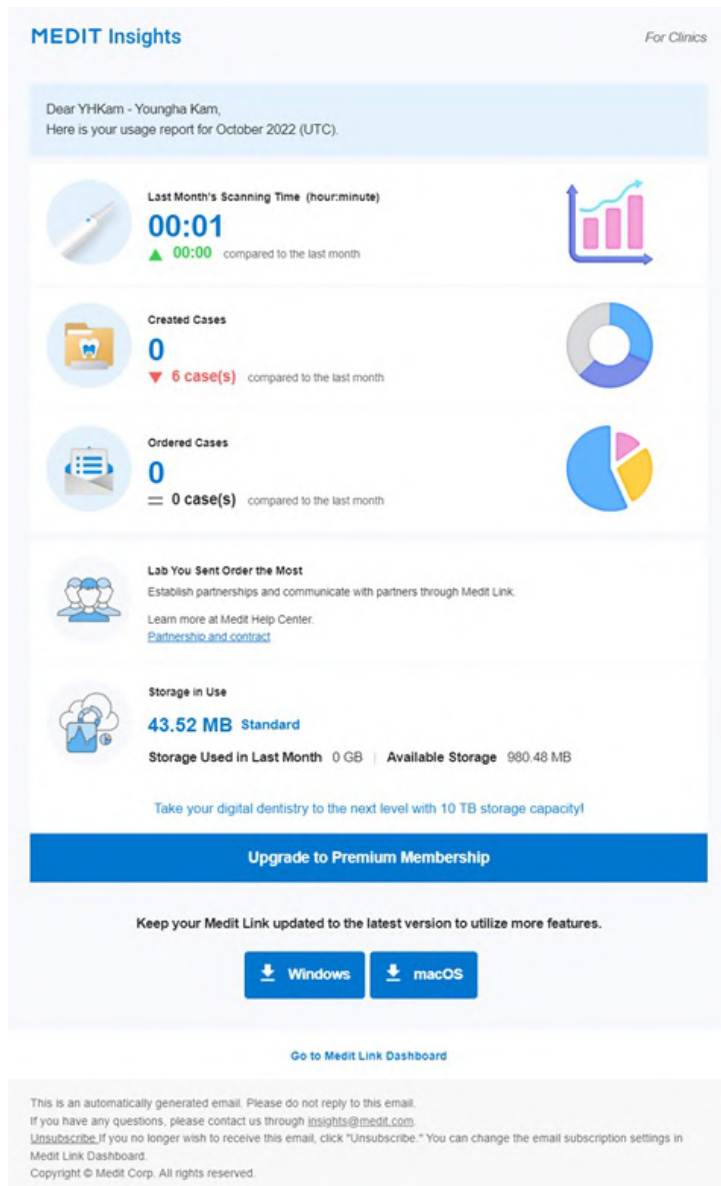

Banner	Medit ger användbara tips och information här. * Om du inte vill se bannern, avmarkera kryssrutan Marknadsföring och kampanjavgift i Min information > Mitt konto.
Statistikinformation	Statistikinformationen visas, såsom skanningstid, skapade fall, mest beställda labb etc.
Ladda ner Medit Link	Klicka på knappen för en nedladdningslänk för Medit Link.
Dashboard	All statistisk information baseras på informationen i din Dashboard. Du kan se mer information i Dashboard.

Avsluta prenumerationen på Medit Insights

Inaktivera "Prenumerera på Medit Insights" i Dashboard eller klicka på "Avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet du fått.

Patient

Du kan hantera fall baserat på patientnamn och patient-ID.

Alla patienter som registrerats via Medit Link-applikationen visas i en lista, vilket gör det lättare att hantera patienter och deras fall.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04		1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Sök patient

1. Ange dina sökkriterier mellan Patientnamn eller Patient-ID från rullgardinsmenyn uppe till höger i patientlistan.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Ange patientens namn eller patient-ID och gör en sökning enligt de valda sökkriterierna.
3. Endast patienter med angivet patientnamn eller ID visas i listan.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) eller Work Box (Lab) visar alla fall som användaren har skapat i Medit Link-applikationen. Du kan visa filer i en webbläsare utan att installera ett separat program.

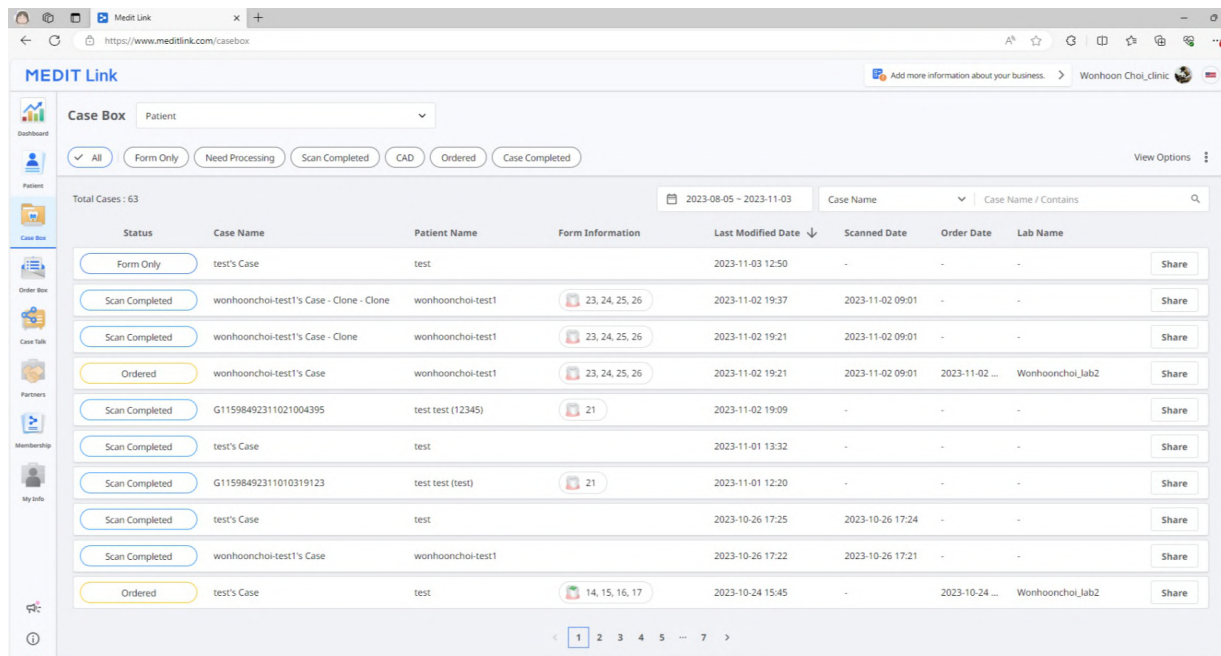


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is also present. The table below shows a list of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table is filtered to show 63 total cases. The first few rows show cases with status 'Form Only', 'Scan Completed', and 'Ordered'. Each row has a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Fallfiltrering

Filtrering enligt patient

Du kan filtrera fall enligt patient. Du kan använda detta för att hitta fall för specifika patienter.

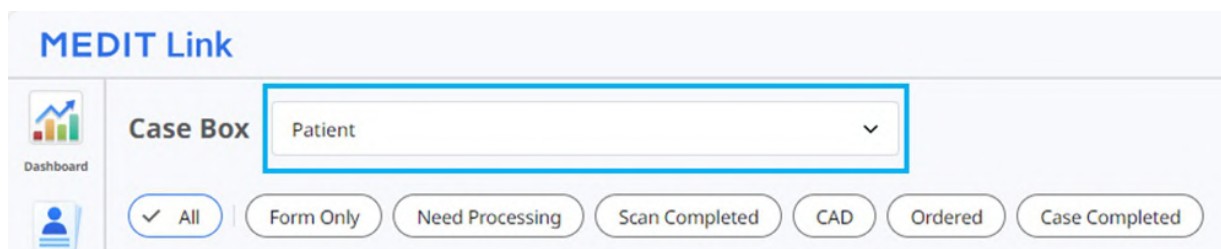

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Ange ett patientnamn i sökfältet.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Välj en patient från listan med sökresultat.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Endast fall för de utvalda patienterna visas i listan, vilket gör det lättare att hitta de fall du vill arbeta med.

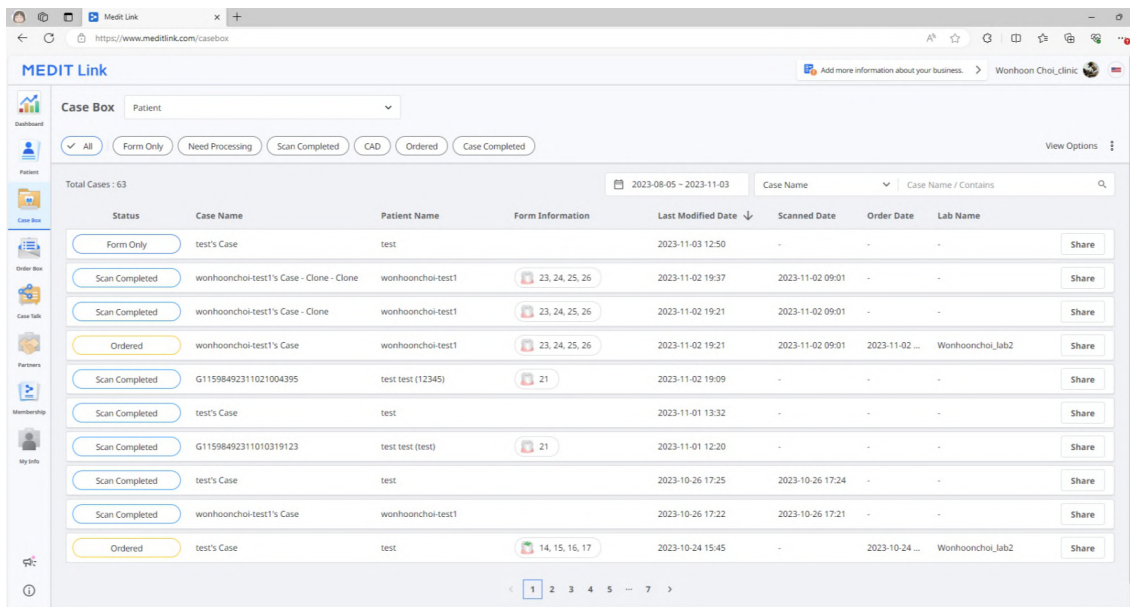

Filtrering enligt status

Du kan filtrera fall enligt status.

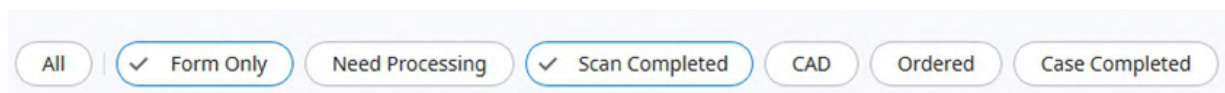

- Klicka på den status du vill se. Webbbläsaren visar endast fall i den valda statusen.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

Följande statustyper tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Labb)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrera enligt tidslängd

Du kan filtrera och visa fall som senast ändrats inom den period du anger.

1. Klicka på filtret för tidslängd.



2. Välj intervall.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Alla: Visar alla fall.

- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som ändrats inom perioden.
- Idag: Visa fall senast ändrade idag.
- Igår: Visa fall senast ändrade med gårdagens datum.
- Senaste 7 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 90 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 90 dagarna, exklusive idag.
- Denna månad: Visa fall från denna månad.
- Föregående månad: Visa fall från föregående månad.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Filtrering enligt sökning

Du kan anpassa sökfunktionerna för att enkelt och snabbt söka efter den information som du behöver.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

Följande sökalternativ tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	Fallets namn, patientnamn, patient-ID, labbnamn
Work Box (Labb)	Fallets namn, patientnamn, kliniknamn, beställnings-ID

Falldetaljer

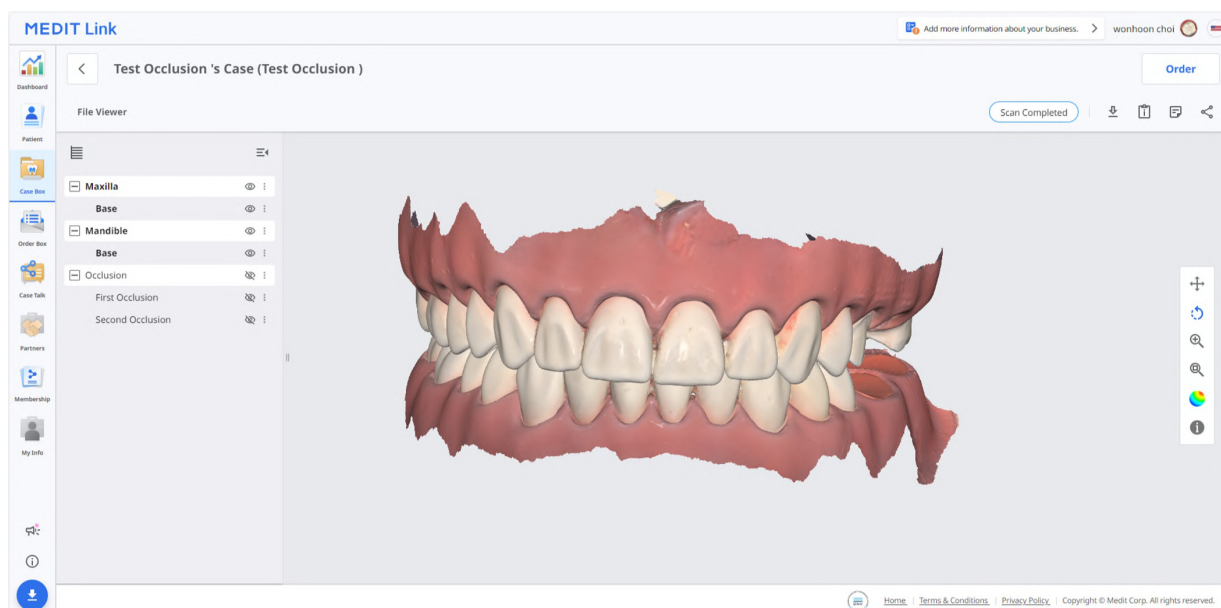

Följande fallhanteringsverktyg finns i Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till Order Box/In Box	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Ladda ner	Ladda ner filer i fallet till datorn.
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox eller Safari utan att installera ytterligare program.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) eller In Box (Labb) visar beställda fall i Medit Link-applikationen.

Beställningsuppgifter

The screenshot displays the Medit Link application interface for viewing an order. The interface is divided into several sections:

- Header:** Medit Link logo and user information (wonhoon choi).
- Sidebar:** Navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.
- Main Content Area:**
 - Order Details (Form):** Contains fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-20 PM 02:08), Order Date (2023-04-27), Requested Delivery Date (AM 08:15), and Expected Delivery Date (AM 08:15). It also includes a Memo field and a Tags field.
 - Order List (Table):** Displays a list of orders with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The table shows four rows of data for Inlay orders.

- | | |
|---|--|
| 1 | Visar fallets namn och patientens namn. |
| 2 | Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande). |
| 3 | Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning |
| 4 | Visar funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc. |
| 5 | Visar detaljerad information om beställningen, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och memo & taggar. |
| 6 | Visar den beställda produktinformationen och leveransstatus. |


Tabbar i Order Box/In Box

Beställning	Filvisning
Visar detaljerad information om beställningen, såsom order-ID, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade och bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer som du anger, med vem som helst med den delade länken eller med registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista med alla delade fall i "Case Talk" i Medit Link-appen och på Medit Links webbsida.

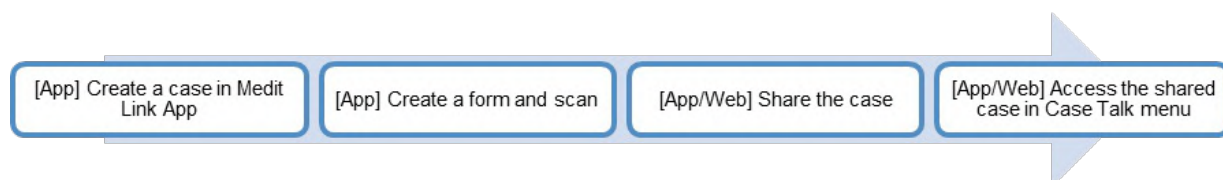

Man kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.


Skapa en Case Talk

Du kan skapa en delad länk till ett fall skapat i Case Box/Work Box.

1. Hitta ett fall du vill dela och klicka på knappen "Dela" till höger.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a patient dropdown and filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below this, a table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table shows 10 cases, with the first one being 'Form Only' and the others being 'Scan Completed' or 'Ordered'. The 'Share' button is highlighted in the first row.

2. Välj de filer som du vill dela.

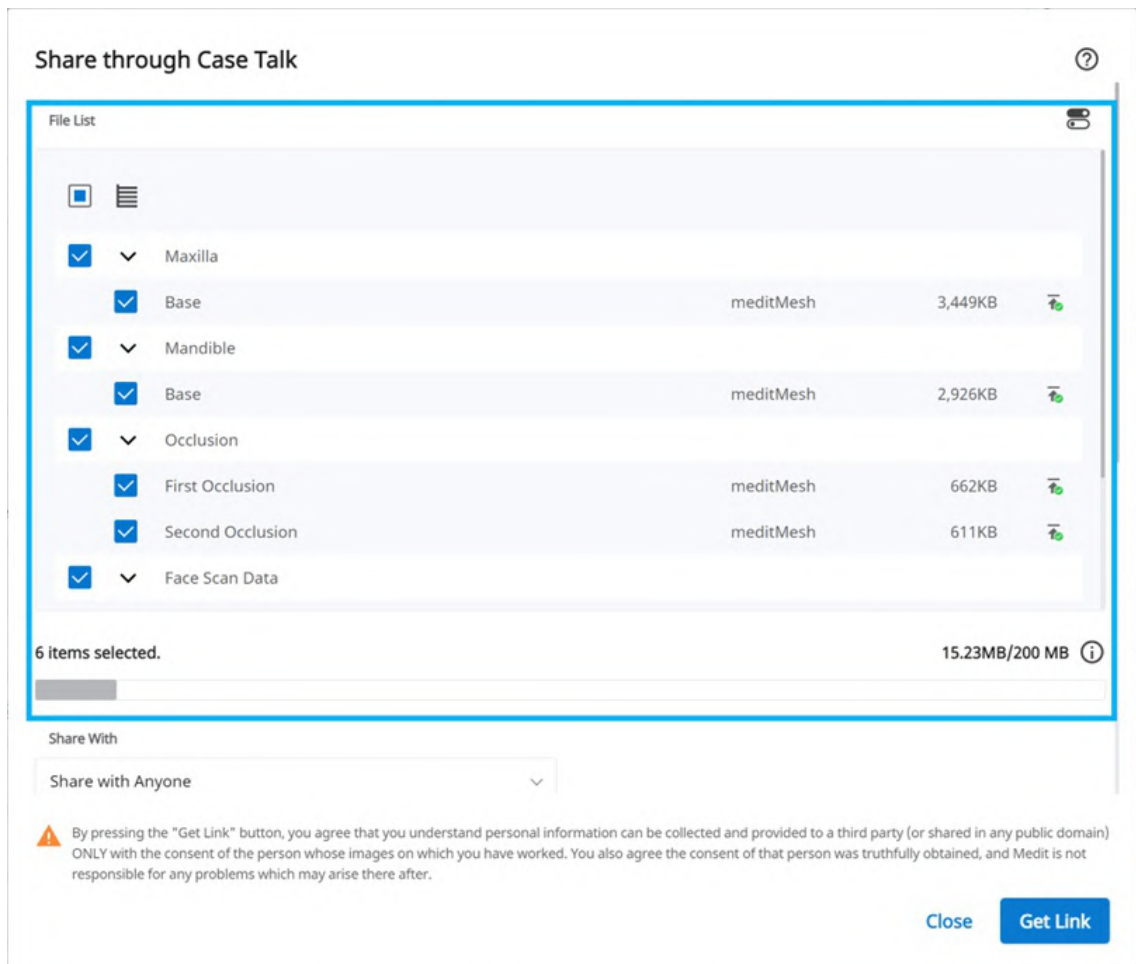

3. Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ.
4. Klicka på "Hämta länk" för att skapa en delad länk.

Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via



PIN Code



PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024



By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Dela med	• Dela med alla Skapar en delad länk. Du kan dela filerna med vem som helst. • Dela med specifika personer Skapar och skickar en delad länk till specifika personer.
Dela via	Om du väljer "Dela med specifika personer" kan du dela länken med specifika personer på olika sätt. • Mejladress • SMS • Partners
Utgångsdatum	Ställ in utgångsdatum för länken. När länken har upphört att gälla kommer personerna som du delat länken med inte längre kunna använda den. Du kan utöka perioden upp till 90 dagar från idag.
PIN-kod	Ställ in en 6-siffrig åtkomstkod för att säkerställa datasäkerhet.
Dela patientens namn	Om du markerar det här alternativet kommer alla personer som är anslutna via länken att kunna se patientens namn.
Ge tillstånd för nedladdning	Om du markerar det här alternativet kan alla användare som har tillgång till den delade länken ladda ner filerna.
Tillåt kommentarer	• Om du klickar i detta alternativ kommer du kunna kommunicera genom den delade länken. • Om du avmarkerar alternativet kan mottagaren endast se dina kommentarer, men kommer inte att kunna lägga till sina egna.
Kommentar	Du kan lämna ett meddelande i kommentarsfältet.

Case Talk-detalyer

Du kan se filer i det delade fallet. Följande funktioner är tillgängliga på informationssidan för Case Talk.

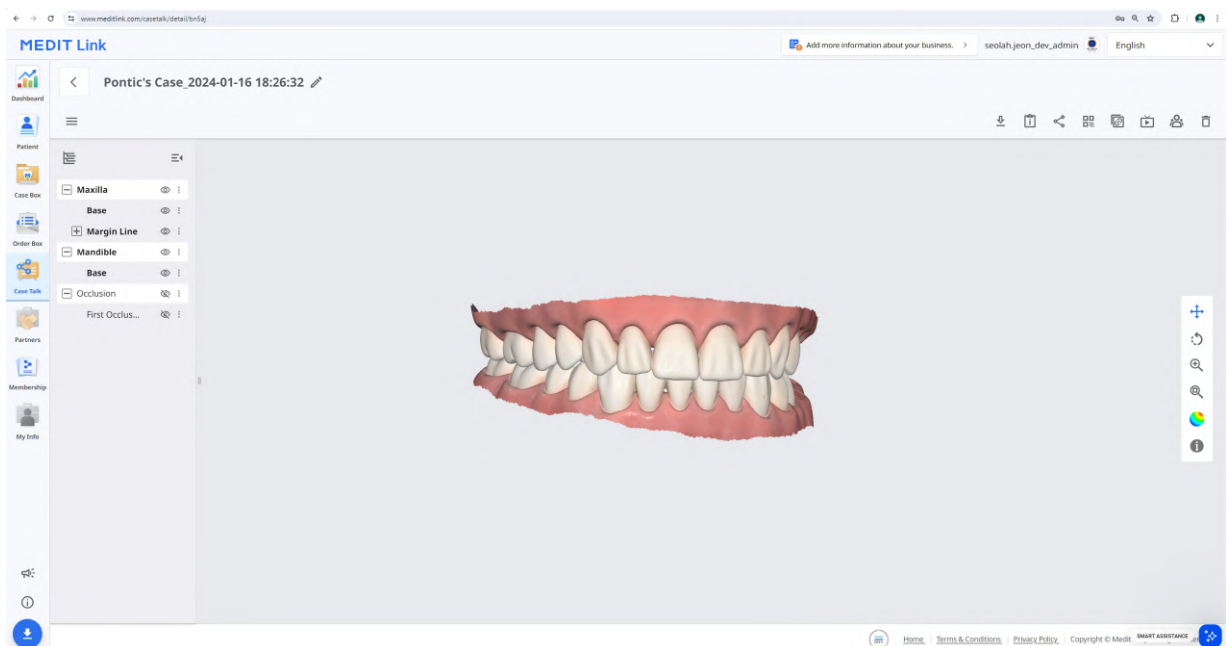

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till den lokala datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	QR-kod	Dela fallet med en QR-kod.
	Kopiera länk	Kopiera den delade länken till urklipp. Den kopierade länken visar de delade filerna i din webbläsare.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som använder den delade länken.
	Radera	Radera den delade länken. Den borttagna delade länken är inte längre tillgänglig.

Obs


Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Web Viewer

Du kan se delad data i Case Talk i en webbläsare.

Du kan kommunicera med de personer som har tillgång till länken med anteckningar och kommentarer.

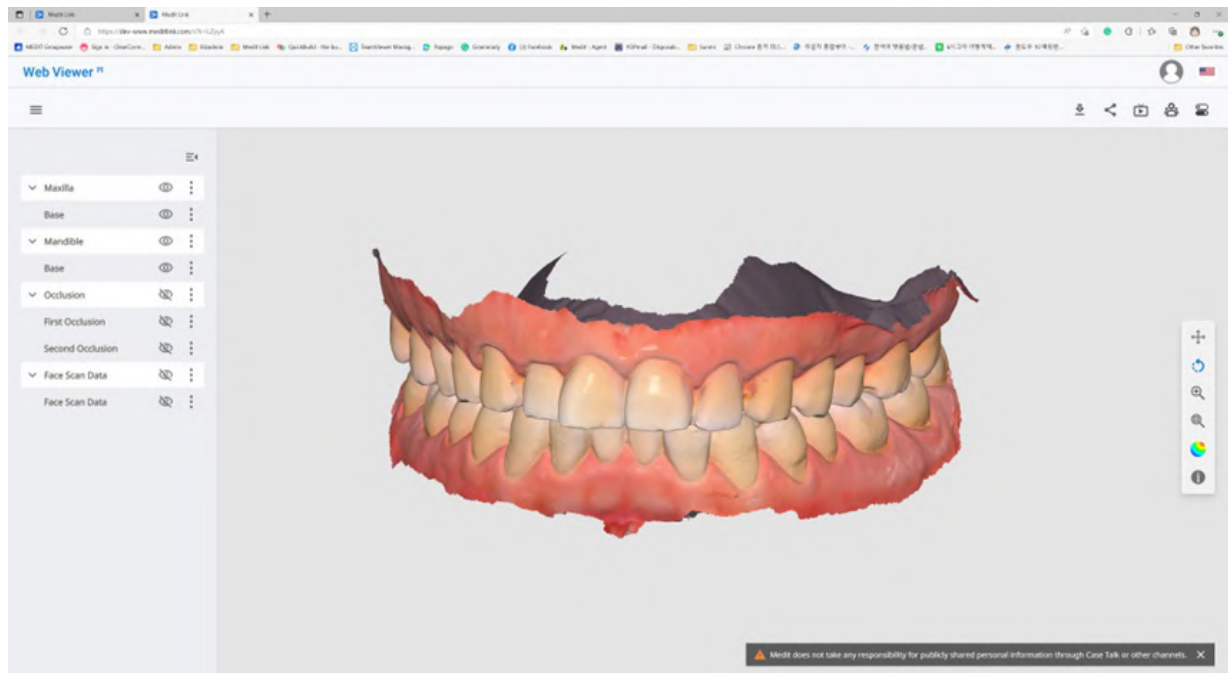

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	QR-kod	Dela fallet med en QR-kod.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som är anslutna till den delade länken.
	Tandmarkering	Byt tandmarkeringssystem.


Obs

Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Anteckning

Du kan lägga till anteckningar på en angiven plats på 3D-modellen. Alla med länken kan se de kommentarer som du lägger till.

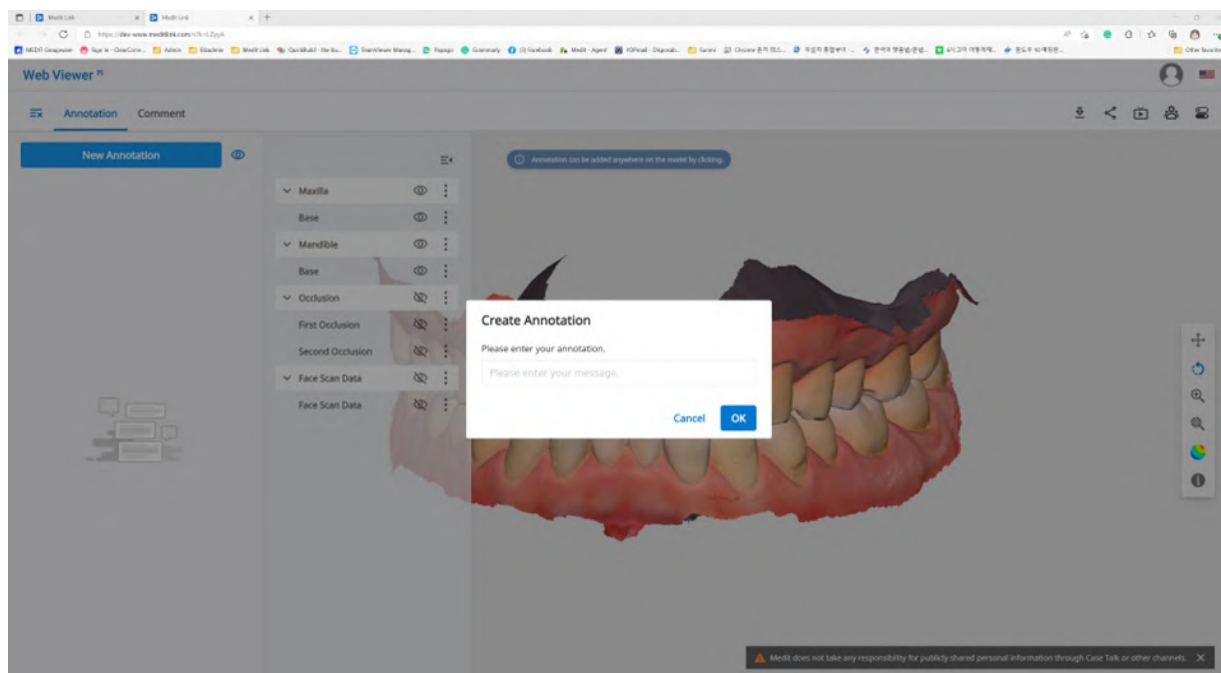


Obs


Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Anteckning

1. Hitta menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj fliken "Anteckning". Använd knappen "Ny anteckning" för att lägga till en anteckning var som helst på datan med ett klick.
2. Skriv meddelandet och klicka sedan på "OK" för att spara det.

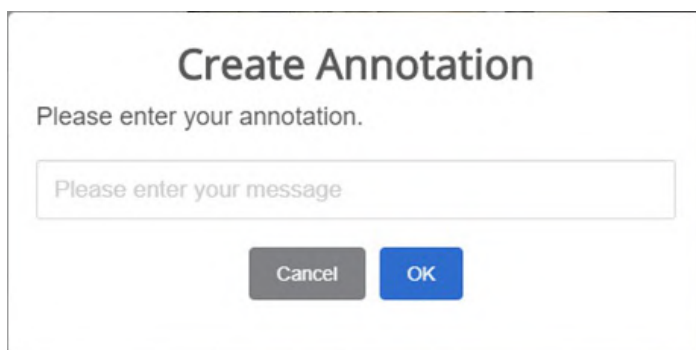

3. Du kan använda kommentarer som en enkel kommunikationskanal. Klicka på den skapade anteckningen för att skriva ett svar och tryck på "Skicka".

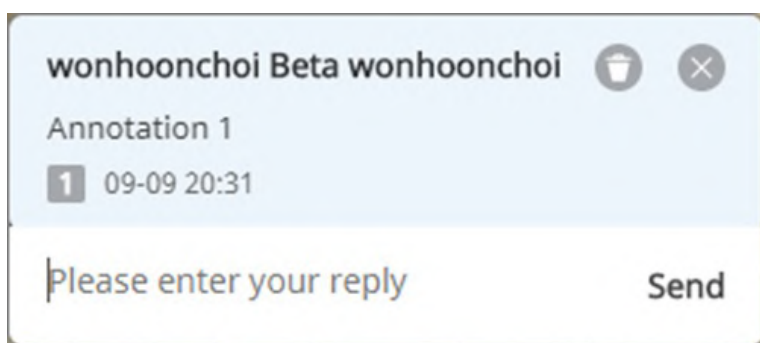

Kommentarer

Du kan kommunicera med användare som har tillgång till länken via fliken "Kommentar" i Web Viewer-menyn.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Kommentar

Skärmdelning i realtid

Du kan dela din skärm i realtid.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Live

1. Klicka på "Live" för att dela din Web Viewer-skärm med anslutna användare.





2. Klicka på "OK" för att börja dela din skärm.
3. Andra personer som är anslutna via länken kan acceptera skärmdelningen.
4. Skärmen för användaren som begärt skärmdelning synkroniseras med skärmen för personen som tagit emot begäran.


Dataträd

All data grupperas och visas enligt attribut i dataträdet. Du kan visa eller dölja data, justera opacitet m.m.

Kontroller för dataträd

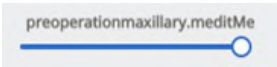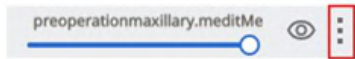Visa/göm	Klicka på "ögon"-ikonen för att visa eller dölja data i vyn. Kontrollera datasynlighet som en grupp eller enskild fil.
Opacitet	Håll musen över ett synligt element för att se skjutreglaget för opacitet. Justera reglaget för att ändra transparensen på dina data. 
Utökad meny	Den utökade menyn visas på höger sida av varje element i dataträdet. Den innehåller följande alternativ:  • Visa endast detta: Dölj alla andra data förutom aktuella data. • Dölj: Dölj aktuella data.

3D-modellkontroll

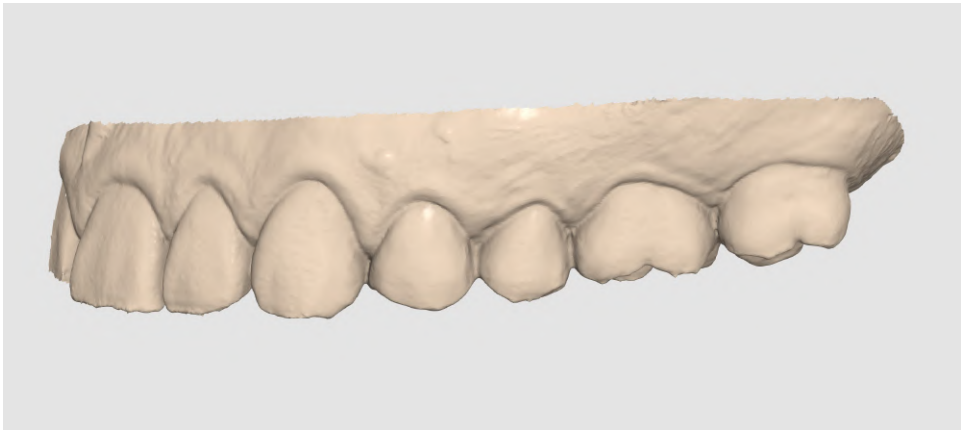+	Panorera	Flytta modellen.
○	Rotera	Rotera modellen.
⌕	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
🔍	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.
D a t a v i s n i g s l ä g e	Matt	Visa data i färg med matt finish (Phong-rendering). 
	Monokrom	Se data i en enda färg. 

Partners

Du kan söka efter potentiella partners för att begära ett partnerskap och se listan över nuvarande partners.




Tjänster som använder Google Maps finns inte tillgängliga för Medit Link China.

Sök efter partners


Du kan söka efter Medit Link-användare utifrån deras företagsnamn och/eller adress.

I sökresultaten kan du skicka en partnerskapsförfrågan till ett företag som du skulle vilja arbeta med.

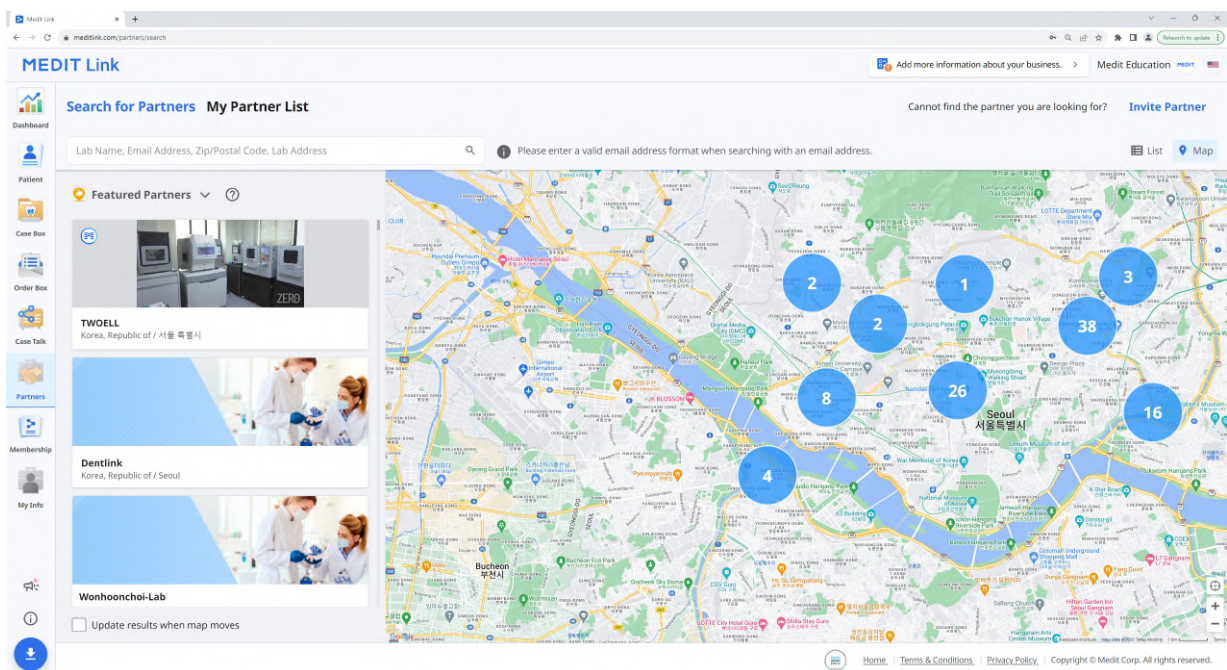

Min partnerlista

Du kan granska dina nuvarande partnerskap med alla dina befintliga partnerföretag i Min partnerlista.

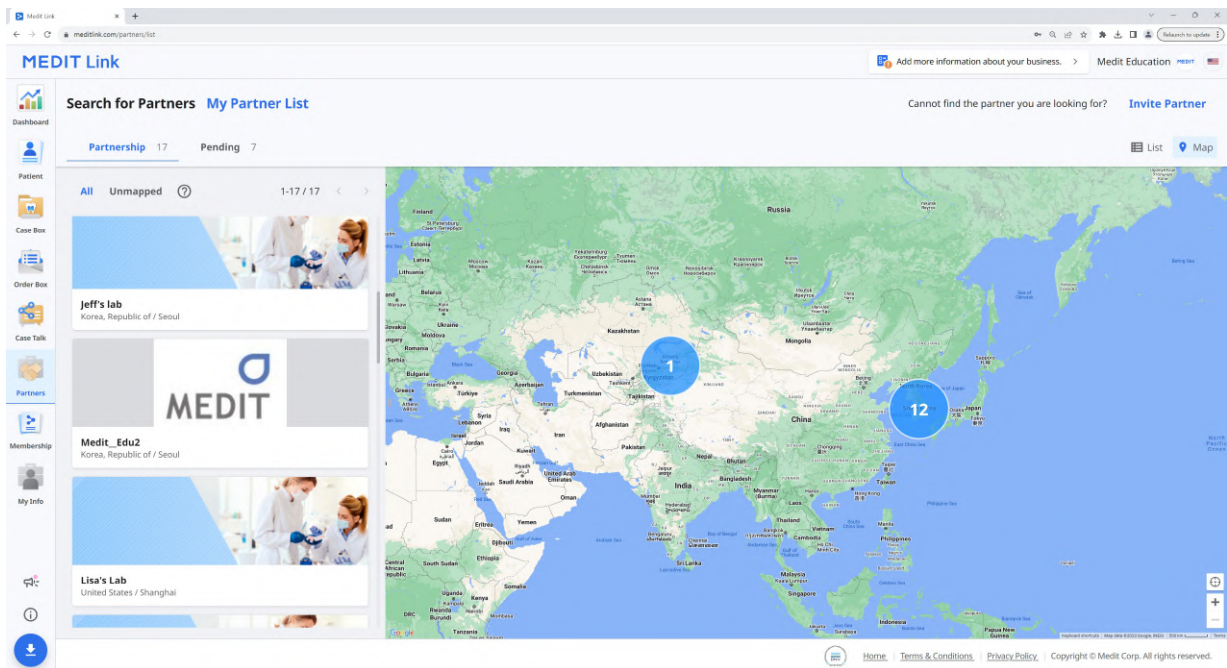

Partnerinbjudan

Om det finns en klinik eller ett labb som du skulle vilja arbeta med kan du bjuda in dem att registrera sig hos Medit Link. Partnerskapet bildas automatiskt när de accepterar inbjudan.

1. Klicka på "Bjud in partner" längst upp till vänster på skärmen.
2. Ange e-postadressen till det företag som du vill arbeta med och skicka en inbjudan med en partnerskapsförfrågan.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. När den inbjudna organisationen accepterar inbjudan och registrerar sig för Medit Link kommer partnerskapet att upprättas automatiskt.

Membership

Medlemskap

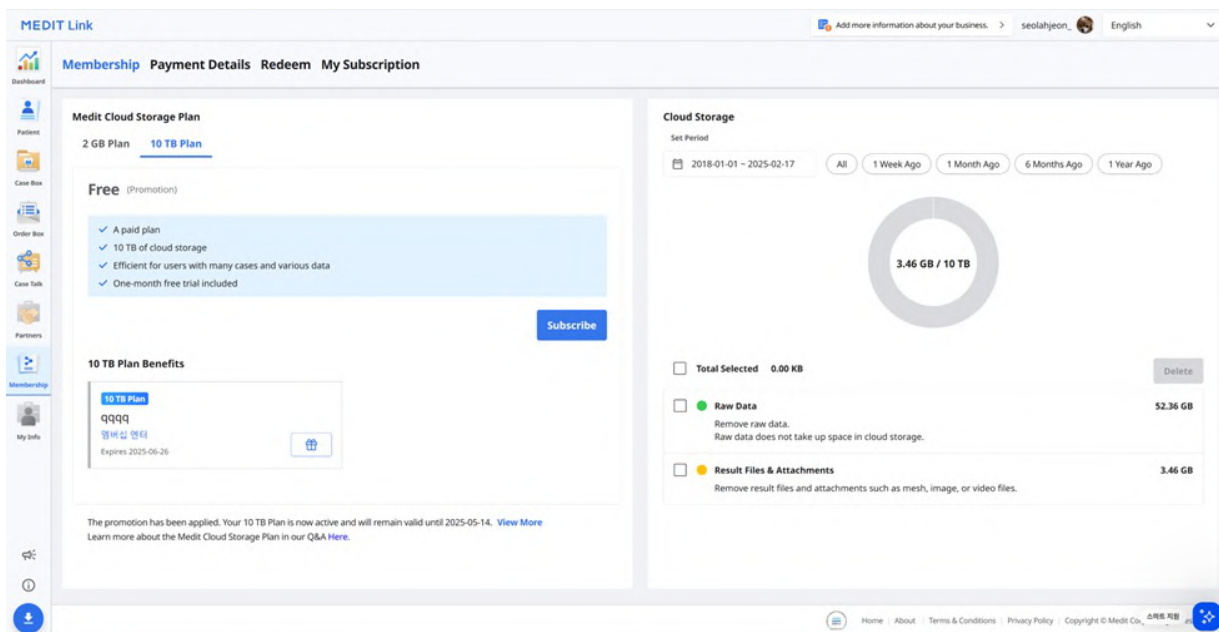

Medit Cloud Storage Plan

Du kan se vad varje plan erbjuder, såsom rabattkuponger och din aktuella prenumerationsstatus. Du kan när som helst uppgradera din prenumerationsplan eller avbryta din prenumeration.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link tillhandahåller följande molnlagringsplaner:

2 GB Plan

- Gratis standardplan för alla registrerade användare
- 2 GB molnlagring
- För nya användare

10 TB Plan

- Betalplan
- 10 GB molnlagring
- För användare med många fall och olika data
- En månads gratis provperiod


	2 GB Plan	10 TB Plan
Molnlagring	2 GB	10 TB
Månadsavgift	Gratis	9,99 USD/månad
* Molnlagring räknar inte in rådata som använt utrymme.		



Medlemskapsplanerna finns tillgängliga för Medit Link China. Du kan använda 10 TB Plan gratis fram till funktionens officiella release.

Molnlagring

I avsnittet till höger kan du hantera din molnlagring.

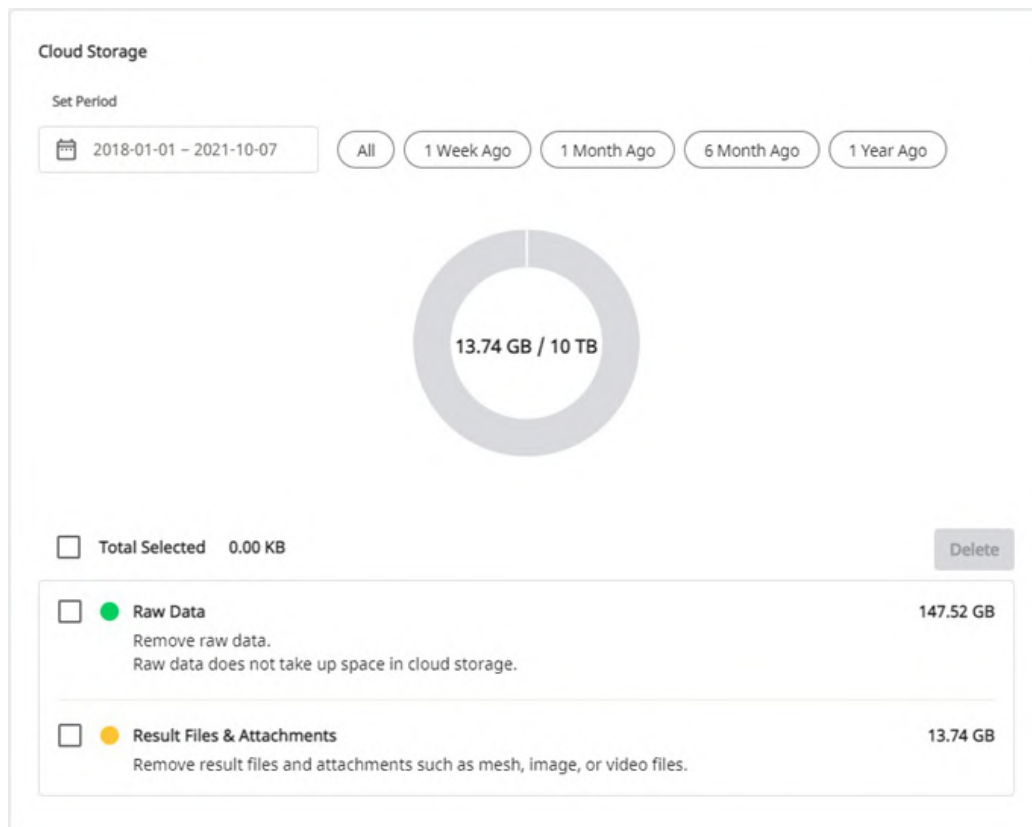

Ställ in period	Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden. • Alla: Se alla filer. • 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan. • 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan. • 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan. • 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.
Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i diagrammet. Du kan även hantera rådata härifrån vid behov, t.ex. radera data för att skydda patientens privata uppgifter.
Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra utrymme.

Prenumerera

Om du för närvarande har 2 GB Plan eller 10 TB Plan med en inlösenkod kan du börja prenumerera på 10 TB Plan.

Betalningen utförs via Stripe-tjänsten (www.stripe.com).

1. Gå till Medlemskap > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan och klicka på knappen "Prenumerera".

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan 10 TB Plan


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Markera 10 TB Plan och klicka på "Prenumerera" igen.

Subscribe Membership

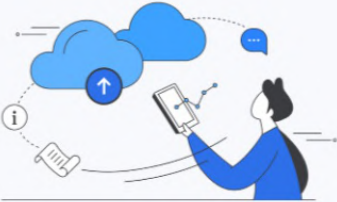

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.


* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel

Subscribe

3. Kontrollera pris och villkor och ange nödvändiga uppgifter för betalningen. Klicka sedan på "Prenumerera".

Cancel Subscription

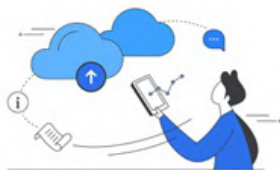

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. För att bekräfta att du vill avsluta prenumerationen, klicka på "Avbryt prenumeration" igen i det nya popup-fönstret.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Prenumerationen har avbrutits.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Din plan kommer att ändras till 2 GB Plan från nästa betalningsdag, och molnlagringen kommer att begränsas till 2 GB. Om molnlagringskapaciteten överskrider kommer filerna inte att säkerhetskopieras och beställnings- och delningsfunktionerna kommer inte att vara tillgängliga.

Min prenumeration

Du kan se detaljerna för din nuvarande prenumeration, prenumerera på nytt eller avbryta den i Min prenumeration. Du kan också lägga till eller ändra betalningsmetoden, vilken i så fall kommer att tillämpas från och med nästa schemalagda betalning.

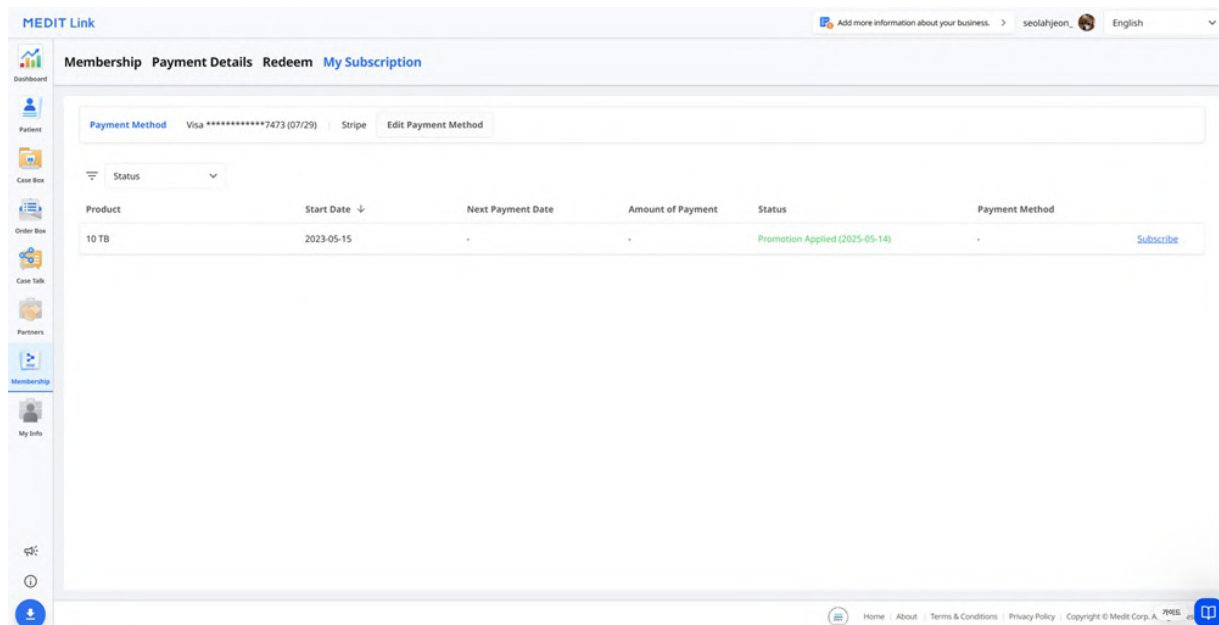

Detaljer


Objekt	Beskrivning
Produkt	Visar prenumerationstyp.
Startdatum	Visar när prenumerationen eller kampanjen startade.
Nästa betalningsdatum	Visar nästa betalningsdatum.
Belopp att betala	Visar betalningsbeloppet.
Status	Prenumeration • Aktiv: Prenumerationen är aktiv. • Upphör: Abonnementet kommer att upphöra nästa betalningsdatum och kommer inte att förnyas. • Upphört: Abonnementet har upphört. Kampanj • Kampanj tillämpad: Kampanjkoden är nu aktiv. • Kampanj väntar: Kampanjkoden väntar på aktivering. • Kampanjen är utgången: Kampanjkoden är utgången.
Betalningsmetod	Visar de fyra sista siffrorna på kortet som används för betalning.

Skapa ny prenumeration


Objekt	Beskrivning
Molnlagringsplan	Klicka på prenumerationsknappen för att prenumerera på 10 TB Plan igen.
App-prenumerationsplan	Logga in i appen för att skapa en ny prenumereration.

Så lägger du till en betalningsmetod

1. Klicka på "Redigera betalningsmetod".

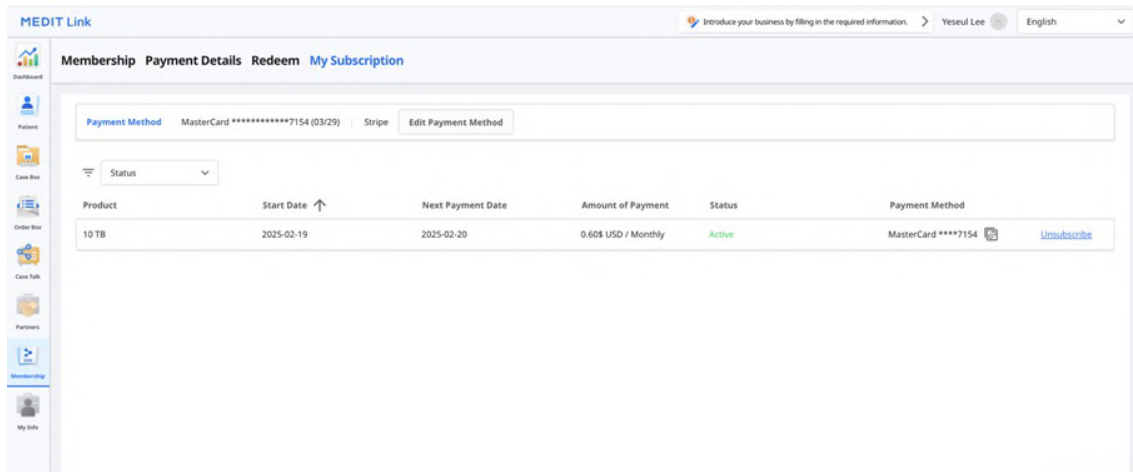

2. Klicka på "Lägg till betalningsmetod".

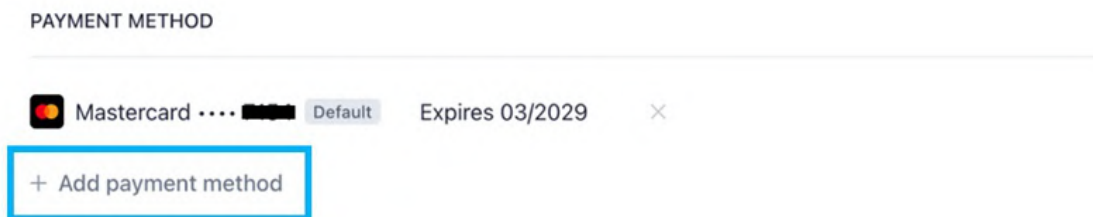

3. Ange efterfrågade uppgifter och klicka på "Lägg till".

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiration date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. Den nytilagda betalningsmetoden kommer att ställas in som standard och användas för nästa betalning.

PAYMENT METHODS



Så ändra du betalningsmetod

1. Klicka på ikonen för utökad meny bredvid den betalningsmetod du vill ändra i faktureringsdialogrutan.

PAYMENT METHODS



2. Klicka på "Ange som standard" för att ange det valda kortet som standardbetalningsmetod.


CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

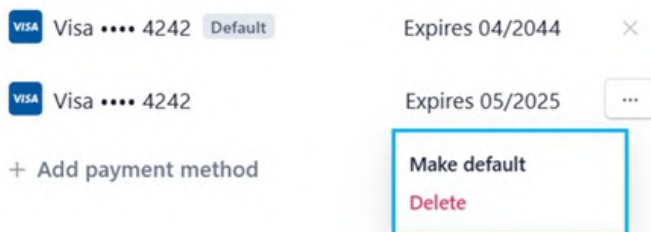

Utnyttja

Du kan använda en kampanjkod för att få gratis tillgång till 10 TB Plan.

Detaljer

MEDIT Link Add more information about your business. > seolah.jeon_dev_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Redeem Code

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting

Cancel

1

Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. GUIDES

Objekt	Beskrivning
Produkt	Visar vilken plan som kampanjen gäller för.
Kampanj	Visar namnet på kampanjen.
Kodnummer	Visar kampanjkoden.
Registreringsdatum	Visar datumet då koden registrerades.
Från	Visar startdatumet för kampanjen.
Till	Visar utgångsdatumet för kampanjen.
Status	• Registrerad: Kampanjkoden har lagts till och kan nu användas. • Waiting: Kampanjkoden väntar på aktivering. • Activated: Kampanjkoden är nu aktiv. • Used: Kampanjkoden har upphört att gälla.

Registrera inlösenkod

1. Ange inlösenkoden och klicka på "Registrera".
2. Läs meddelandet och välj "Registrera" eller "Tillämpa" i popup-rutan.
 - **Registrera**: Registrera inlösenkoden. Du kan aktivera och använda inlösenkoden senare efter registrering.
 - **Tillämpa**: Registrera och aktivera inlösenkoden. Kampanjrabatten gäller direkt.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

Aktivera inlösenkod

Du kan registrera flera inlösenkoder, men du måste aktivera den du vill använda.

- Klicka på knappen "Aktivera" bredvid koden du vill använda.
 - Om det inte finns någon kod med statusen "Activated" kommer den du väljer att tillämpas omedelbart.
 - Om det finns en redan aktiverad kod ändras den nyvalda koden till "Waiting". När den för närvarande aktiverade inlösenkoden går ut kommer den nya lösenkoden i status "Waiting" att aktiveras automatiskt.

Obs

Endast en inlösenkod kan aktiveras, och endast en kan vara i status "Waiting".

Betalningsuppgifter

Du kan se din prenumeration och betalningshistorik på fliken Betalningsuppgifter.

MEDIT Link

Introduce your business by filling in the required information.

Yeseul Lee

English

Dashboard

Patient

Case Note

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

All

Membership

Medit Apps

2024-11-21 ~ 2025-02-19

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2025-02-19	10 TB	Subscription	2025-02-19 ~ 2025-02-20	Monthly payment	0.00 \$ (USD)	Payment Completed

1

스마트 지원

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © MEDIT Corp. All rights reserved.


Objekt	Beskrivning
Betalningsdatum	Visar betalningsdatum.
Produkt	Visar den köpta planen eller appen.
Betalningstyp	Visar betalningstyp: • Prenumeration • Engångsbetalning
Period	Visar prenumerationsperioden.
Detaljer	Visar detaljerad betalningsinformation.
Belopp att betala	Visar beloppet för en prenumeration eller ett engångsköp.
Status	• Payment Completed: Betalningen har behandlats. • Payment Failed: Betalningen har inte behandlats. • Payment Incomplete: Betalningen har inte genomförts. Klicka på "Betala nu" för att gå vidare. • Waiting: Betalningen avvaktar en prenumerationsförnyelse.

Visa faktureringsinformation

Du kan se dina betalda fakturor och kvitton genom att klicka på kvittoikonen till höger.

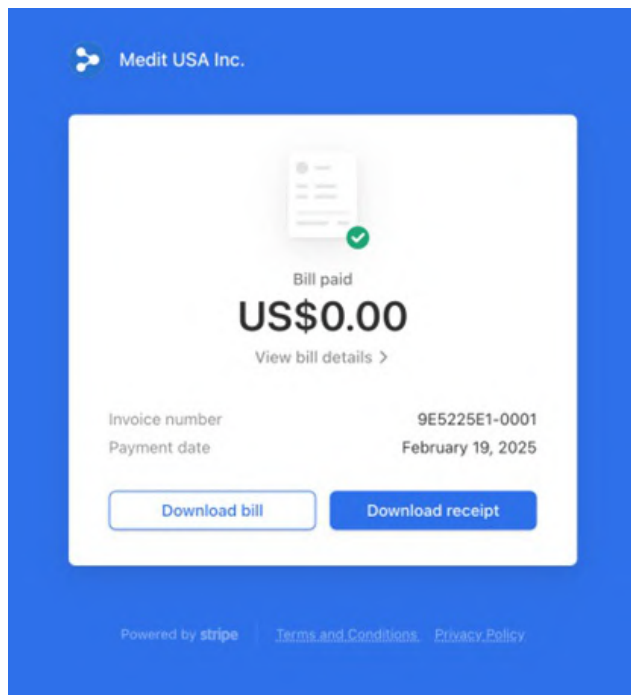

Klicka på "Visa faktureringsinformation" för betalningsinformation.

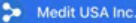Medit USA Inc.


Bill paid
US\$0.00
[View bill details](#) X

Invoice number 9E5225E1-0001
Payment date February 19, 2025

[Download bill](#) [Download receipt](#)

Powered by [stripe](#) | [Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

X Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source Medit USA Inc.
bill #9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics US\$0.60
Quantity 1 piece

subtotal US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인) -US\$0.60

Payment amount US\$0.00

Amount paid US\$0.00

Remaining amount US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Mitt konto

I My Info kan du se och redigera de uppgifter du angett vid registreringen och se din medlemsstatus.

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

📘 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)

Du kan granska och redigera informationen om din klinik eller ditt labb. Det här avsnittet är endast tillgängligt för administratörskonton.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

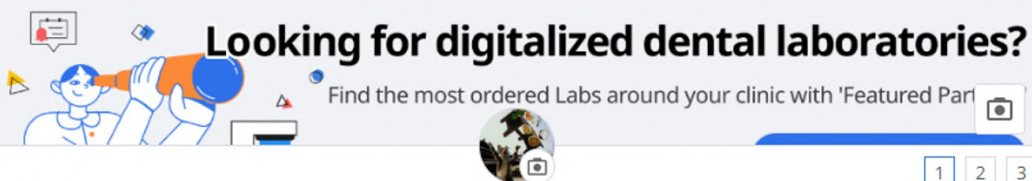

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Min skanner

Här kan du se information om enheten som är ansluten till kontot.

MEDIT Link

Dashboard

Patients

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © 2024

TRUBLESHOOTING

Add more information about your business.

seolahjeon_

English

My Account

My Clinic

My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Date	Days L...	Status	
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26	Expired	Unregistered	Buy
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Unregistered	Buy
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	2025-03-06 09:52	2024-09-05 14:23	-	-	-	Registered	Buy
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2022-10-30	2023-10-29	Expired	Unregistered	Buy
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-	-	Unregistered	Buy
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	-	2022-06-16 11:58	-	-	-	Unregistered	Buy
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-	-	Unregistered	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Objekt	Beskrivning
Typ	Visar modellnamnet.
Serienummer	Visar enhetens serienummer.
Användningstid	Visar hur länge enheten har använts.
Status	Visar enhetens registreringsstatus: "Registrerad" innebär att skannern har anslutits och registrerats. "Inte registrerad" innebär att skannern inte längre är registrerad. Om skannern är registrerad med en annan grupp kommer den att tappa denna registrering i den aktuella gruppen.
Senast ansluten	Visar datumet för den senaste anslutningen.
Senast kalibrerad	Visar datumet för den senaste kalibreringen.
Garantins startdatum	Visar datumet när garantin aktiverades.
Garantins slutdatum	Visar datumet när garantin löper ut.
Dagar kvar	Visar antalet dagar som återstår innan garantin löper ut.
Köp	Här kan användaren köpa och förlänga garantin.
Radera ikon	Här kan användaren ta bort skannern från listan.

Annan meny

Notifiera & uppdatera

Här kan du läsa viktiga meddelanden från Medit och få programuppdateringar av Medits programvara.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Relaterade webbplatser

Här får du information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, som Medit Academy, Medit Academy YouTube och Medit Help Center.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Ladda ner Medit Link-appen

Du kan ladda ner den senaste versionen av installationsprogrammet från webben. Den här menyn är användbar om du förlorat installationsprogrammet som ingår i produktpaketet, eller om du har ett föråldrat installationsprogram.

 **Obs**

Medit Link uppdateras automatiskt när du har en internetanslutning.



Windows

macOS

Översikt

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Titelfält	Gå till Medit Link App > Titelfält för detaljerad information.
2	Meny	Gå till Medit Link App > Meny för detaljerad information.
3	Verktyg och funktioner	Gå till Medit Link App > Filvisning och Medit Link App > Visa alternativ för detaljerad information.
4	Fallista	Gå till Medit Link App > Filtrering och Sök för detaljerad information.

Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.

Kontotyp		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Klinikkonton	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Medlem	O	O	O	X	X	O	* Endast återställningsfunktion	O
Labbkonton	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Medlem	X	X	X	O	O	O	* Endast återställningsfunktion	O

Titelfält

Titelfältet ger snabb åtkomst till funktioner som kontoinformation, aviseringar, meddelanden och uppdateringar, inställningar och nätverksstatus.



Min information

Min information visar grundläggande information som profilbild, klinik- eller labbnamn, e-postadress och användarnamn.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Aviseringar

Du kan se aviseringar relaterade till partnerskap, beställningar och arbetsprocesser.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


- | | |
|---|--|
| 1 | Markera rutan för att endast visa olästa meddelanden. |
| 2 | Du kan klicka på en avisering och direkt gå till det relaterade fallet eller den kopplade webbsidan. |

Notifiering & uppdatera

Här kan du se viktiga meddelanden från Medit och programuppdateringar av Medits programvara.

Inställningar

I dialogrutan Inställningar kan användare konfigurera programmet.

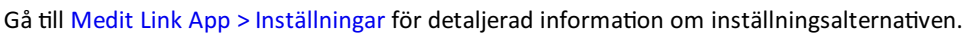

Med Medit Link kan du sömlöst använda alla funktioner i tjänsten när du är uppkopplad mot ett nätverk.

För att hjälpa dig att kontrollera statusen för din nätverksanslutning i realtid, visas nätverksstatusikonen i titelfältet.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Om nätverksanslutningen inte är bra uppstår följande begränsningar:

- Vissa funktioner är begränsade, som fallbeställning, fallskapande, delning via Case Talk och molnsynkronisering.
- Försämrade nätverksmiljö kan reducera tjänstens övergripande prestanda.

Upplever du detta kan du använda offlineläget för att utföra grundläggande uppgifter och sedan använda de funktioner som kräver internet när du är uppkopplad.



Obs

Nätverkshastighetssymbolen visar svarshastigheten mellan det aktuella området och AWS (Amazon Web Service). Det visar dock inte din nätverkshastighet, varför din status ibland kan visas som svag eller dålig, även när din nätverkshastighet är tillräckligt hög.

Om det finns annan process som också använder samma nätverk kan hastigheten visas som svag eller dålig, och den övergripande prestandan för Medit Link kan vara dålig. Upplever du detta, undvik att dela nätverket med andra processer.

Till exempel tar funktionen "Ladda upp rådata" en stor del av nätverksprocessen. Om symbolen visar statusen som svag eller dålig, gå till Inställningar > Ladda upp rådata och avaktivera "Ladda upp automatiskt".

Inställningar

Allmänt

Visar alternativ för övergripande systeminställningar.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Spara mapp	Ange en mapp för att lagra dataresultaten skapade i Medit Link och anslutna program.	
Installationsmapp för appar	Ange en sökväg för installation av Medit Apps och partnerappar som finns tillgängliga i App Box.	
Språkinställningar	Välj programspråk.	
Tandmarkering	Välj mellan tandmärkningssystemen FDI och US.	
Aviseringar	När detta är markerat får du aviseringar om programuppdateringar.	
Ladda upp rådata	När detta är markerat laddas rådata automatiskt upp till molnet. Det gör att du kan säkerhetskopiera originaldata och utföra sömlös skanning när du använder Medit Link med samma konto på en annan dator. Den ursprungliga molnbackupen av dina data gäller endast data som förvärvats i Medit Scan for Clinics.	
Snabbskanning	Välj om du vill att skanningsstadierna nedan ska visas automatiskt i Medit Scan for Clinics utan att behöva fylla i forminformation. • Pre-op för överkäke • Pre-op för underkäke • Ansiktsskanning	
Visningsalternativ	Avancerad rendering	När denna är markerad visas 3D-modellen i en mer levande och realistisk rendering.
	Justera färgtextur	Justera 3D-modellens ljusstyrka. * De resulterande färgerna kan skilja sig något från Medit Link när du öppnar samma data med ett annat program.
Program för att förbättra användarupplevelsen av Medit	Gå med i programmet för att förbättra användarupplevelsen av Medit. • Vi använder den insamlade informationen för att förbättra våra produkter och tjänster. • Vi samlar inte in någon information som identifierar individer.	
Standardsida efter inloggning	Välj den standardmeny som ska visas när du startar programmet. • Klinikkonton kan välja mellan Patient och Case Box • Labkonton kan välja mellan In Box och Work Box	

Lagringshantering

Kontrollera och hantera det lokala lagringsutrymmet och molnlagringsutrymmet.

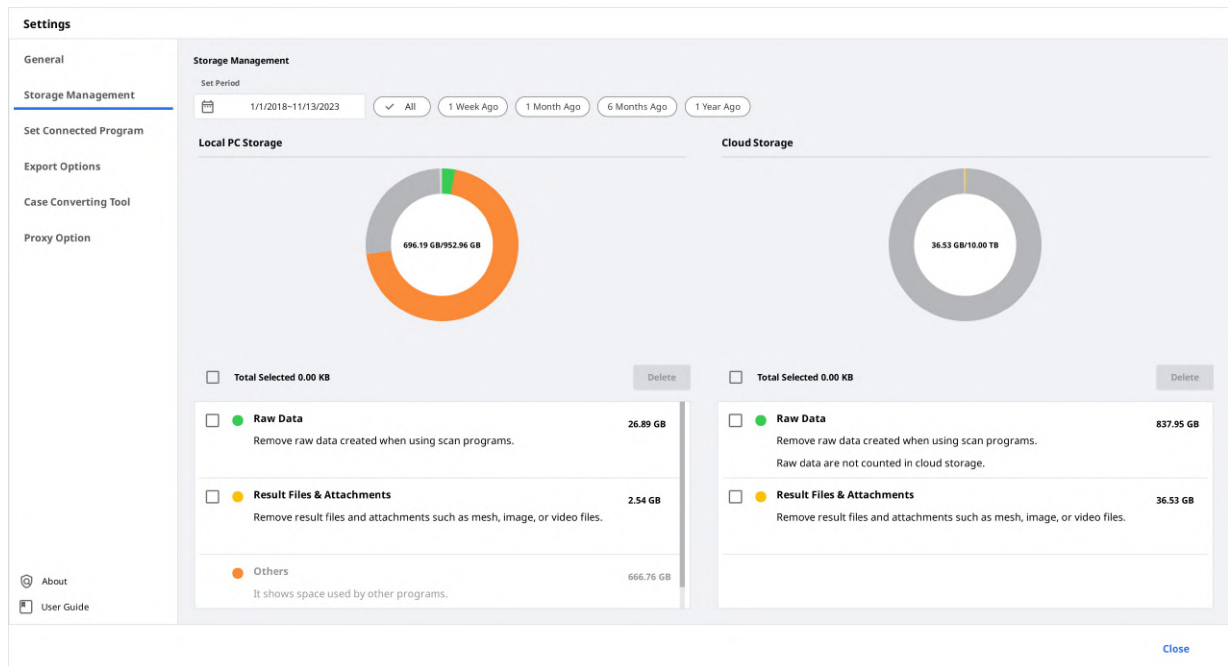

Ställ in period

Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden.

- Alla: Se alla filer.
- 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan.
- 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan.
- 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan.
- 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.

Lokal lagring

Hantera lagringsutrymmet på datorn.

Rådata	Ta bort den valda rådatan från datorn. Om rådatan redan är uppladdad till molnet kan du ladda ner och använda den när du vill.
Resultat & bilagor	Ta bort resultat- och bifogade filer från datorn, såsom mesh, bilder och videor. Om dessa filer redan har laddats upp till molnet kan du ladda ner och använda dem när du vill.
Övriga	Se vilka filer som används för att styra systemet och andra program. Visar lagringen på din dator. Du kan inte ta bort dessa filer i Medit Link.
Radera	Ta bort valda filer från datorn.

Molnlagring

Hantera molnlagringsutrymmet.

Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i diagrammet. Men du kan hantera rådata härifrån om det behövs, t.ex. radera den för att skydda patientens privata information etc.
Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Köp lagringsutrymme	Om du har 2 GB Plan, välj en prenumeration på 10 TB Plan för att utöka din molnlagring.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra lagringsutrymme.

Ställ in anslutna program

Hantera programmen som stöder integration i Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

 About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

Du kan ansluta följande program:

	Klinikkonto	Labbkonto
Skanningsprogram	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Integrering av följande tjänster är inte tillgängligt med Medit Link för Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Exporteringsalternativ

Ställ in hur filer ska exporteras från Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close


74

Typ	Välj det CAD-program du vill använda för att designa. Programmet kommer att justera resultaten baserat på ditt val, så att du kan fortsätta med designen utan ytterligare axeljustering.
Exportera filer till	Ange sökvägen till där du vill lagra resultaten.
Meshformat	Ange formatet för den slutliga mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera & kombinera	Komprimera filer: Komprimera alla resultat till en enda fil. Kombinera individuell mesh: Kombinera överkäkes- eller underkäkesresultat till en enda fil. När du använder vissa program som inte kan importera och arbeta med flera filer, kan du slå ihop dem till en enda för att kunna arbeta med dem i dessa program.
Alternativ för när samma mapp eller fil redan existerar.	Välj standardåtgärden för fall där samma mapp eller filnamn finns i målsökvägen. • Fråga alltid vid exportering. • Exportera en ny fil och skriv över befintliga filer. Filen som finns lagrad kommer att gå förlorad. • Skapa en mapp och exportera filerna
Regler för mappnamn	Definiera regler för att skapa ett mappnamn vid export av filer. De angivna reglerna kommer att tillämpas på mappnamn, och den exporterade filen kommer att sparas i den skapade mappen. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID
Regler för filnamn	Definiera namnregler för exporterade filer. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID

Fallkonverteringsverktyg


Du kan flytta fall mellan olika konton genom att exportera befintliga fall på kontot eller importera fall som exporterats från andra konton.

3. Ange en period i avsnittet Exportera eller sök efter fall att exportera vid behov.

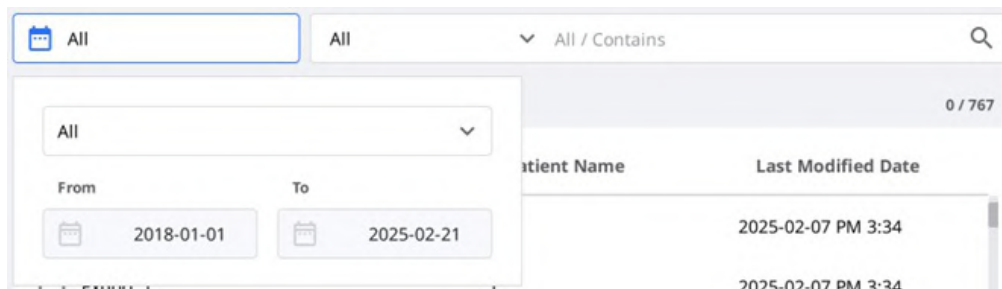

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. Välj de fall som du vill exportera från listan i avsnittet "Filer att exportera".

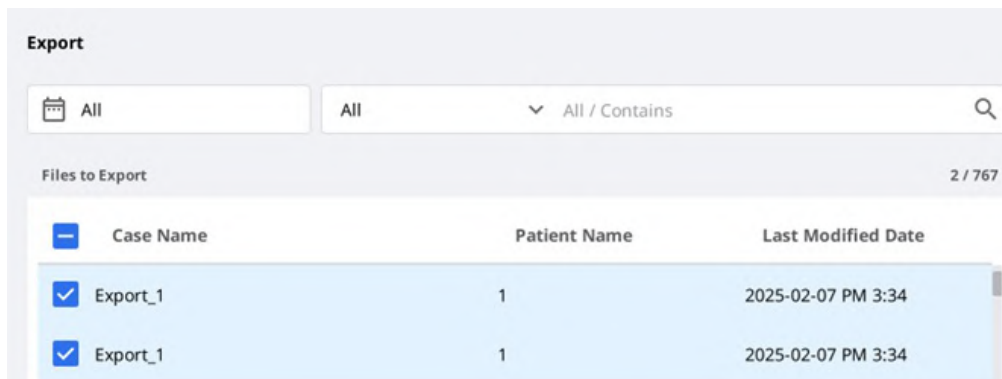

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. Ange filnamnet genom att redigera fallnamnet i fältet Filnamn.
6. Ange målmappen dit de valda fallen ska exporteras.
7. Klicka på "Exportera".
8. Klicka på "Ja" för att öppna mappen dit filen ska exporteras.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. De exporterade fallen sparas i .meditex-filformat.

Importerera fall


1. Öppna Medit Link och klicka på ikonen Inställningar.

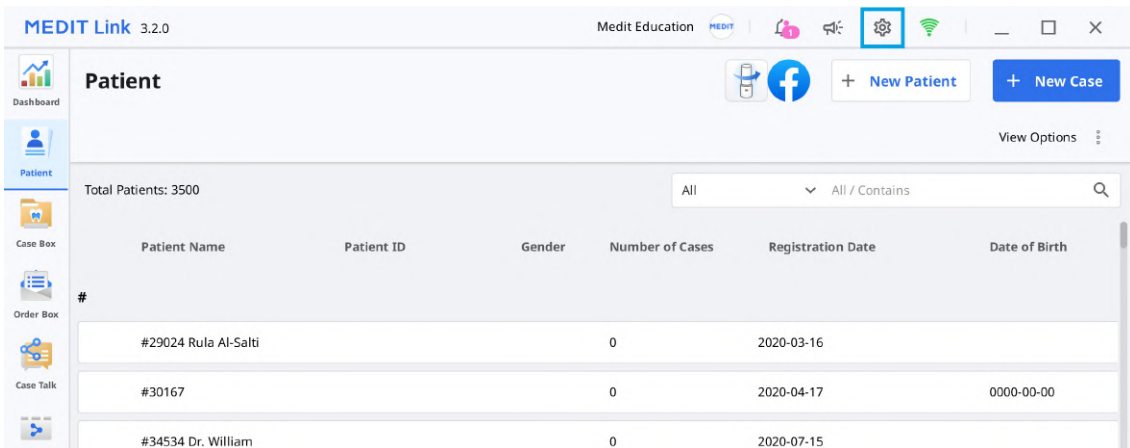

2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

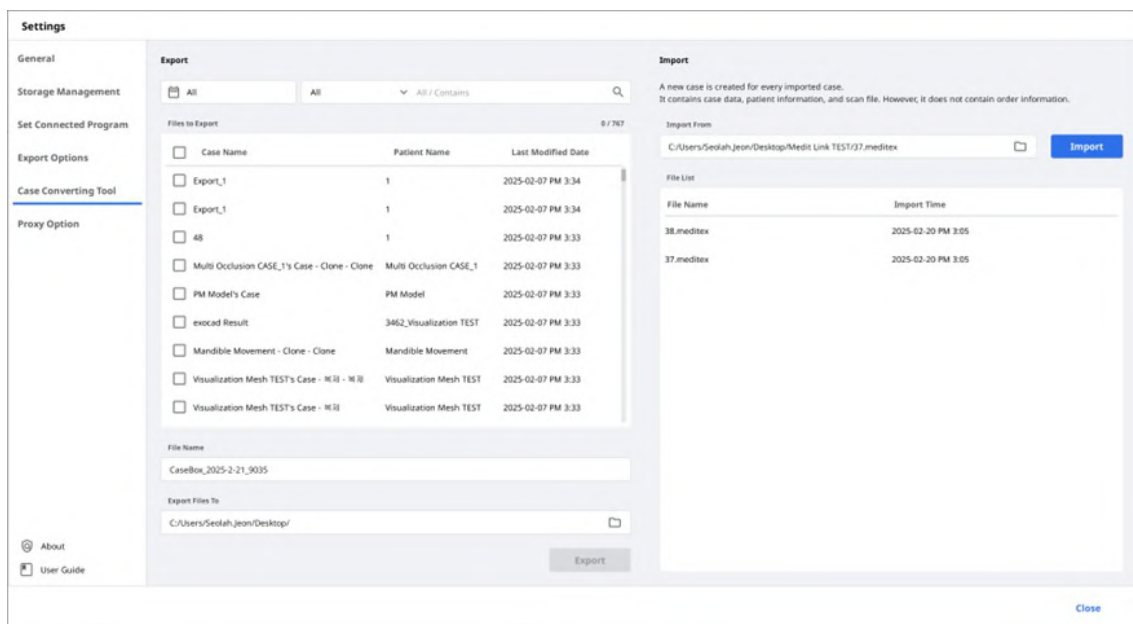

3. I importsektionen klickar du på mappikonen på din dator för att söka efter den .meditex-fil som du vill importera.

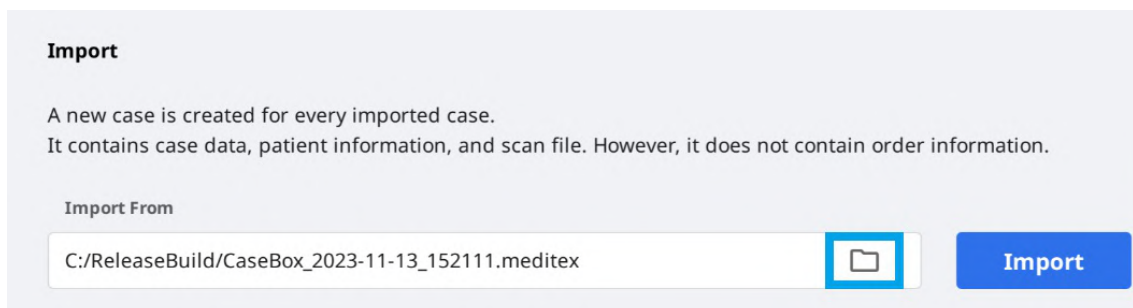

4. Klicka på knappen "Importera" och markera de filer du vill importera i listan nedan.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Det importerade fallet kommer också att visas i din Case Box (klinikkonto) eller Work Box (labbkonto).

Proxyalternativ

I vissa begränsade nätverksmiljöer kan du ändra nätverksinställningar.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Om

Visa detaljerad information om Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Användarguide


Hämta användarguiden för Medit Link.

För att öppna användarguiden krävs en internetanslutning.

Meny

Dashboard

Du kan se statistiken för hela arbetet med Medit Link i visualiserade grafer och diagram – både i Medit Link-appen och på webben.

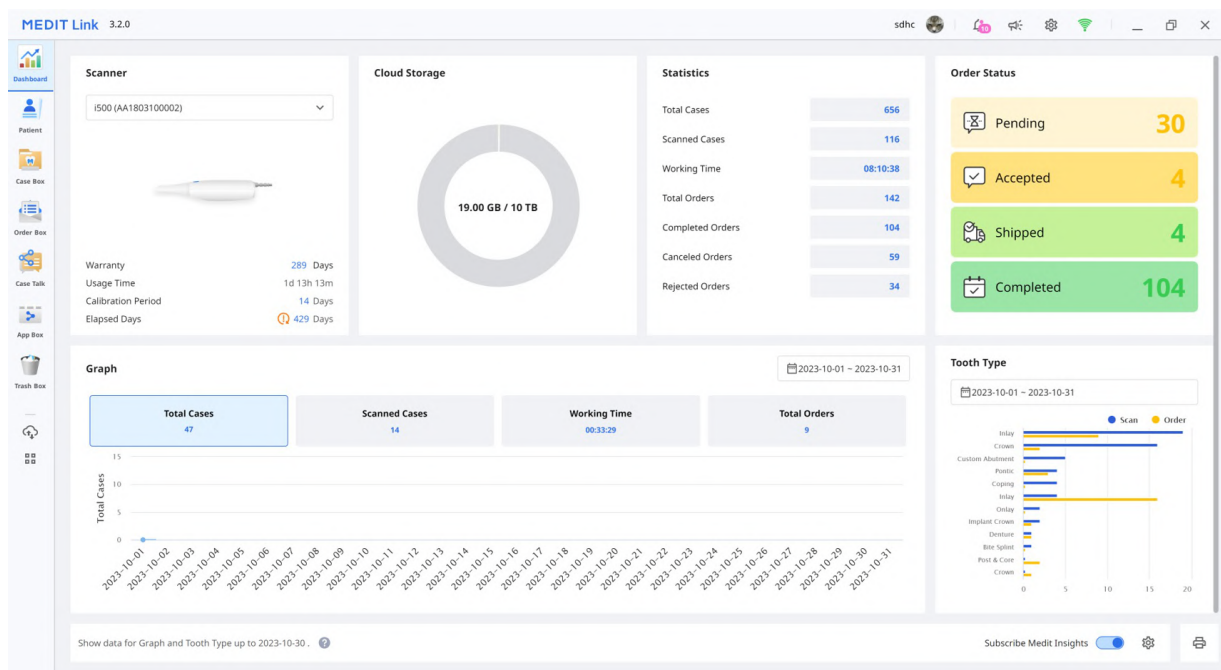

Obs

Se [Medit Links webbsida > Dashboard](#) för mer information om Dashboard och Medit Insights.

Patient

I menyn Patient kan du lägga till, redigera, ta bort och sammanfoga patienter.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggsfsgdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Lägg till ny patient

1. Klicka på "Ny patient".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo


Cancel Save

2. Fyll i den nödvändiga informationen i dialogrutan "Ny patient" och klicka sedan på "Spara".

Radera patient

Du kan radera en patient om det inte finns några fall för patienten.

1. Välj den patient du vill radera från listan.

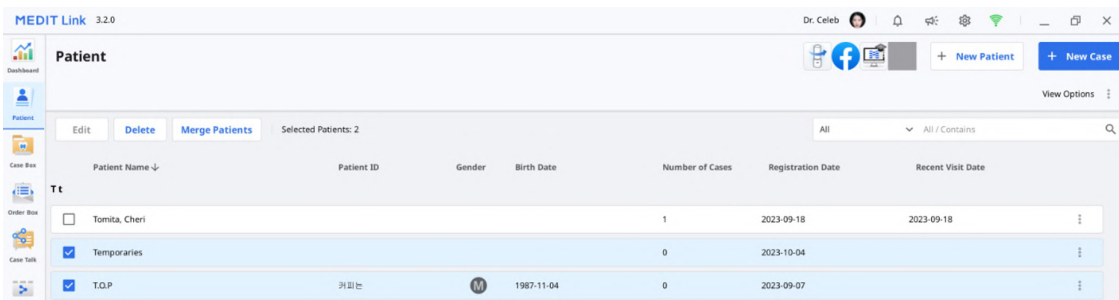


2. Klicka på "Radera".

Sammanfoga patienter

Du kan slå samman alla fall med flera patienter till en enda patient.

1. Välj de patienter du vill slå samman från listan.

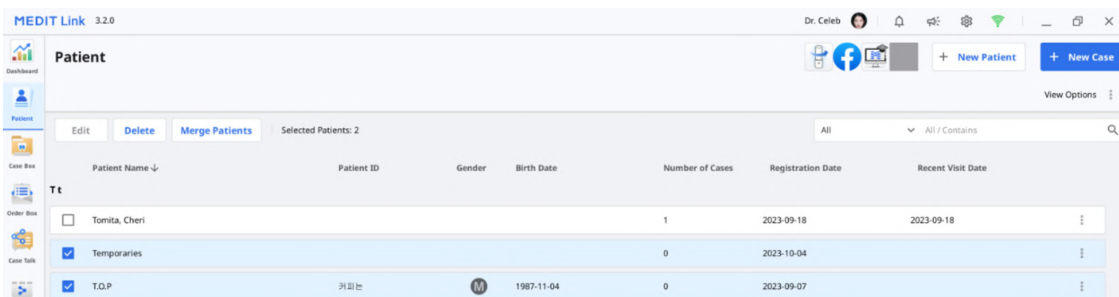

2. Klicka på "Slå samman patienter".
3. Välj den målpatient för vilken du vill slå samman alla fall.
4. Alla fall slås samman till målpatienten och patientinformationen för målpatienten bibehålls.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klicka på "Tillämpa" för att utföra sammanslagningen.

Case Box/Work Box

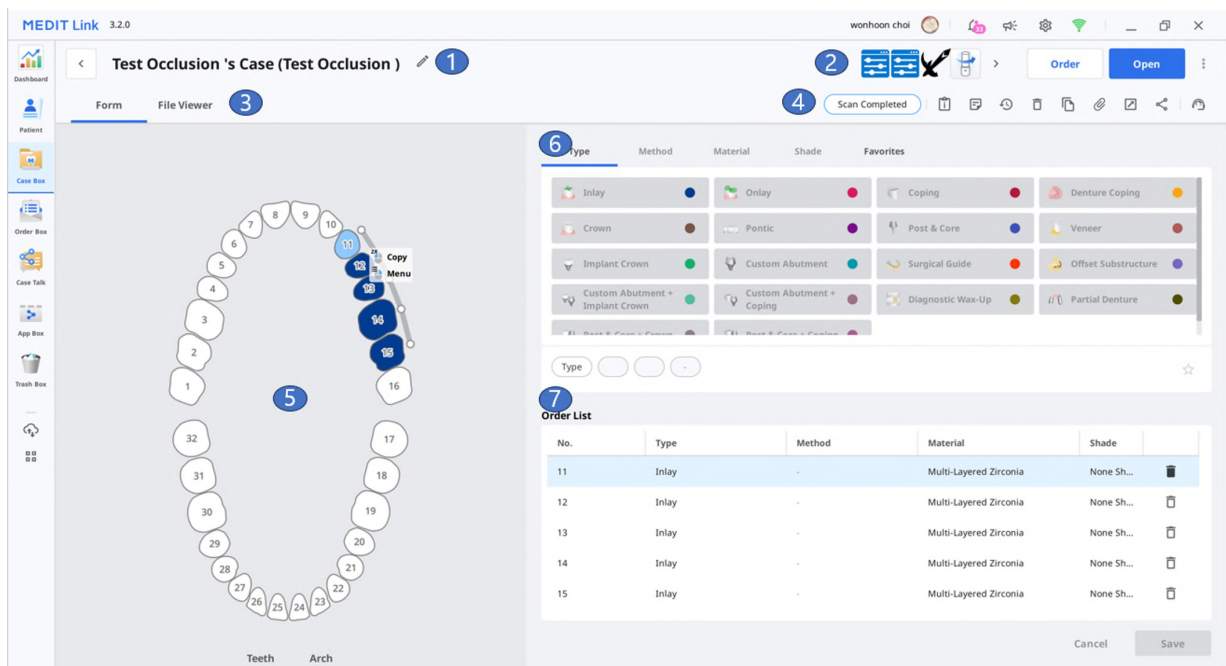

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visa tillgängliga nyckelfunktioner: Skanna- eller öppna-knapp, beställningsknapp, appikoner.
3	Visa tillgängliga flikar: Form, Filvisning.
4	Visar funktioner för fall- och filhantering.
5	Visa formulärregistreringsgränssnittet för det valda skanningsprogrammet.
6	Visar typ/metod/material/nyansinformation som användare kan välja för det valda tandnumret.
7	Visar typ/metod/material/nyansinformation som tillämpas på de valda tänderna.

Tabbar i Case Box/Work Box

Form	Filvisning
Fliken Form tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ange grundläggande information för skanningsarbete, såsom typ, metod, material för tandnummer och skanningsalternativ. Informationen du anger skickas till det anslutna skanningsprogrammet och används som beställningsinformation när du gör en beställning hos din partner.	Visar resultatfiler som genererats av skanningsprogram och CAD. Filvisaren visar och hanterar hämtade och bifogade 3D-modeller och 2D-bilder.

Funktioner i Case Box/Work Box

Följande funktioner finns för Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till Order Box/In Box	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Fallhistorik	Visar detaljerad information om fallhistoriken. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Radera	Radera fallet. Du kan inte radera beställda fall eller fall skapade offline.
	Klona	Skapa en dubblett av det aktuella fallet i Case Box. All data kopieras till det klonade fallet. Med den här funktionen kan du replikera behandlingsinformation för samma patient eller göra en extra beställning med samma information eller filer.
	Bifoga	Bifoga filer i olika format.
	Exportera	Exportera skannings- eller CAD-resultatfiler till datorn. Du kan välja önskat filformat när du exporterar filer. De exporterade filerna kan användas i CAD- och CAM-program för vidare arbete.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox och Safari utan att installera ytterligare program. Du kan dela länken fritt med vem som helst eller endast med specifika personer. Du kan ställa in en PIN-kod eller ett utgångsdatum för en länk för att skydda privat information.
	Skicka in supportförfrågan	Öppnar en Medit Hjälpcenter-sida för att skicka in supportförfrågan.

Order Box/In Box

Order ID	Patient Name	Partner Name	Scan Date	Order Date	Requested Delivery Date	Expected Delivery Date
5996137	Occlusion Test	WonhoonChoi_Lab_Stage	2023-04-20 08:15	2023-04-20 08:15	2023-04-27	2023-04-27

Type	Method	Material	Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande).
3	Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning.
4	Visa funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc.
5	Visar detaljerad information om beställningar, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och anteckningar & taggar.
6	Visar den beställda produktinformationen och leveransstatus.

Tabbar i Order Box/In Box

Beställ	Filvisning
Kontrollera den detaljerade informationen relaterad till beställningen, såsom ordernummer, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade eller bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer, med dem som fått den delade länken eller registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista över alla delade fall genom Case Talk i Medit Link-appen och på Medit Link Web.

Obs

Tjänsten "Case Talk" kräver en internetanslutning.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Man kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.

App Box

App Box tillhandahåller olika tilläggsprogram som kompletterar ditt vanliga skanningsarbetsflöde och förbättrar produktiviteten. Du kan ladda ner och installera de medföljande apparna för att skapa tandutrustning, analysera skanningsdata, som hjälp under en konsultation eller för att effektivisera din arbetsprocess.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now](#)

Search by App Information

Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

- Medit DCM Converter** (Update)
- Medit Smile Design** (Installed)
- Medit Ortho Simulation** (Install)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)** (Install)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration** (Install)
- EasyRx Integration** (Install)
- Open Dental Integration** (Install)
- iie systems connector** (Install)
- OneClick Integration App** (Install)
- i-Pro Integration** (Install)
- LOGOSw Integration** (Install)
- DentalCAD Integration** (Install)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)** (Install)
- Andcom Integration** (Install)

Allt


Fliken "Alla" visar listan över alla tillgängliga appar inklusive Medit-utvecklade originalappar (Medit Apps) samt partnerappar som är integrationsappar med Medits partners från olika digital tandvårdssektorer, såsom 3D-utskrift, CAD/CAM-program, m.m.

Medit Apps

Fliken "Medit Apps" visar endast listan över Medit-utvecklade originalappar.

Nedladdat

Fliken "Nedladdade" visar en lista över de appar som finns installerade på din PC och appar som tidigare har laddats ner av användarkontot.

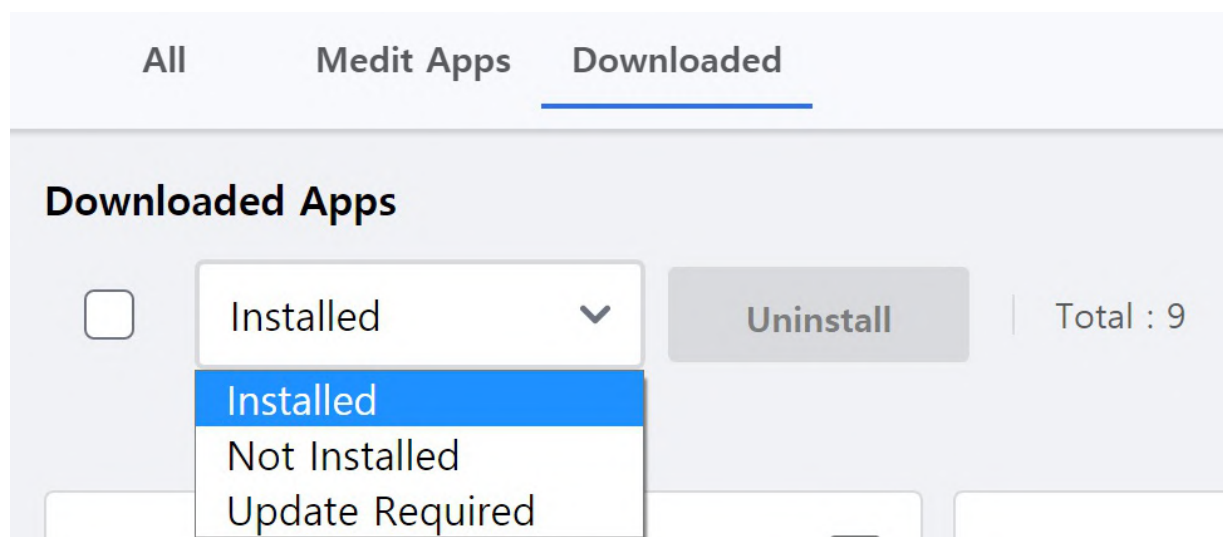

- **Installerat:** Detta alternativ visar endast appar som är installerade på datorn som användaren för närvarande är inloggad på.
- **Inte installerat:** Detta alternativ visar appar som du har installerat på andra datorer så att du snabbt kan installera dem.
- **Uppdatering krävs:** Detta alternativ visar endast de appar installerade på den aktuella datorn som behöver uppdateras.

Trash Box

Trash Box lagrar tillfälligt dina raderade fall. Alla fall i Trash Box kan antingen återställas eller raderas permanent.

Obs

Data som raderas från Trash Box raderas permanent från din dator och servern, och kan inte återställas.

MEDIT Link3.2.0

wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

▼

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_인플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	인플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Fallsynkroniseringsansvarig

Med Fallsynkroniseringshanteraren kan du enkelt ladda upp och ladda ner fall. Du kan ladda upp flera fall till molnet eller ladda ner fall till din lokala dator. För att hitta fall som behöver synkroniseras kan du göra en enkel sökning eller använda datumfilter.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Close

Ladda upp

 Upload	Ladda upp de valda fallen.
 Cancel	Avbryt uppladdningen av valda fall.
 Retry	Försök att ladda upp fallen igen om uppladdningen misslyckas.

Ladda ner

 Download	Ladda ner de valda fallen.
 Cancel	Avbryt nedladdningen av valda fall.
 Retry	Försök att ladda ned fallen igen om uppladdningen misslyckas.

Relaterade webbplatser

Du kan gå direkt till menyer som endast finns tillgängliga på Medit Link Web, som My info, Partners och Membership. Se Medit Link > Medit Links webbsida > [Partners](#), [Medlemskap](#) och [My Info](#) för detaljerad beskrivning av Medit Links webbmenyer.

Du har åtkomst till Medits webbutik, Medit Shop, där du kan köpa utökade garantier för skannrar och andra produkter från Medit såsom skannerrygsäckar.

Du kan också hitta information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, såsom Medit Hjälpcenter, Medit Academy YouTube-kanal och Medit Academy onlineutbildningsplattform.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Filvisning

Filvisning grupperar och visar olika data, inklusive data som samlats in från program kopplade till Medit Link och data som bifogats av användare.


Det tillhandahåller grundläggande administrativa funktioner som att visa/dölja data, justera opacitet och radera data.

Det stöder förhandsgranskning av filer i följande format:

- 3D-data: STL, OBJ, PLY
- 2D-bilder: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videofiler: MKV, MP4, AVI, WMV

Dataträd

I dataträdet kan du gruppera och visa all data i fallet. Du kan också visa/dölja data, justera transparens och radera data från dataträdet.

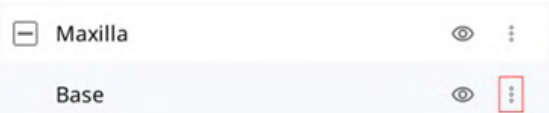	Visa/göm	Du kan visa eller dölja data.
	Opacitet	Skjutreglaget visas när du klickar på någon data i dataträdet. Med skjutreglaget kan du justera opaciteten för visade data. 
	Mer	Om du klickar på ikonen Mer visas ytterligare tillgängliga funktioner.  • Visa endast detta: Visa endast motsvarande data och dölj alla andra data. • Dölj: Dölj data. • Duplicera: Kopiera data och lägg till i gruppen som ska bifogas. • Exportera: Exportera valda filer. • Döp om: Ändra namn på data. • Radera: Radera data.

Obs

Du kan ändra namn på data när du är online.

Modellkontrollverktyg

3D-modellkontroll

+	Panorera	Flytta modellen.
↺	Rotera	Rotera modellen.
🔍	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
🔍	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.
🌈	Dat avi sni ngs läg e	Glansigt
		Matt
🟠		Monokrom


Visa data i färg med glansig finish (PBR-rendering).





Visa data i färg med matt finish (Phong-rendering).



Se data i en enda färg.

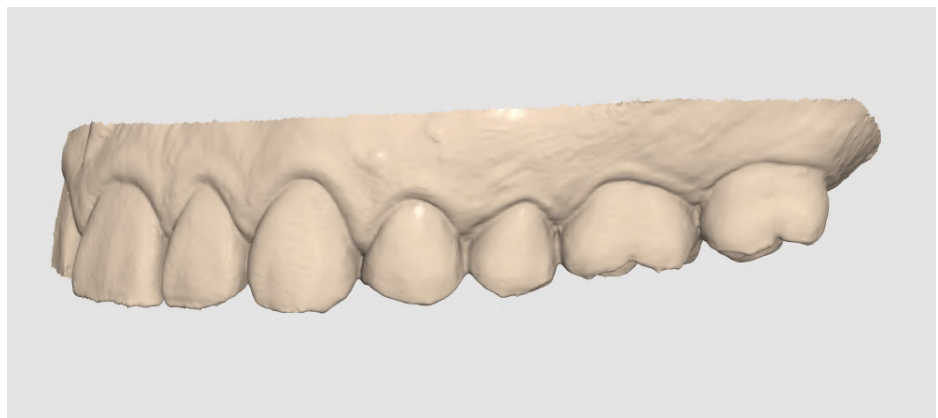

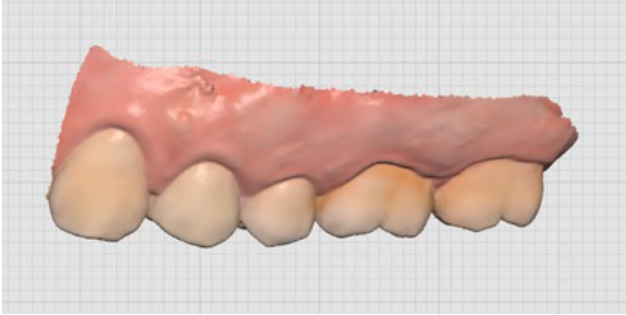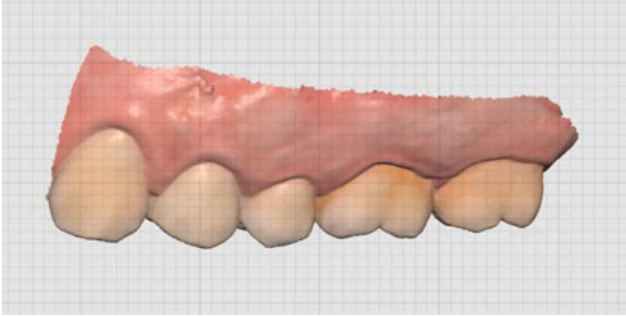	Rutnät sin stäl Inin gar (m m)	Rutnät på	Visar rutnätet i bakgrunden. 
		Rutnät av	Visar rutnätet i bakgrunden.
		Lager på	Lägg rutnätet över modellen. 

2D-bildkontroll


 	Nästa/Föregående bild	Flytta dig mellan bilder.
	Redigera	Redigera bilden.
 	Nyp/fäst fönstret	Du kan ta loss bildfönstret och flytta det till önskad position. Du kan återställa fönstret. När fönstret återställs till sin ursprungliga plats återgår det till standardstorleken.

Funktionsverktyg

Skärminspelning och memo


Avbilda den aktuella skärmen som en 2D-bild, rita på den eller lägg till anteckningar.


Du kan spara den som en fil med dina anteckningar och skicka den som en referens.

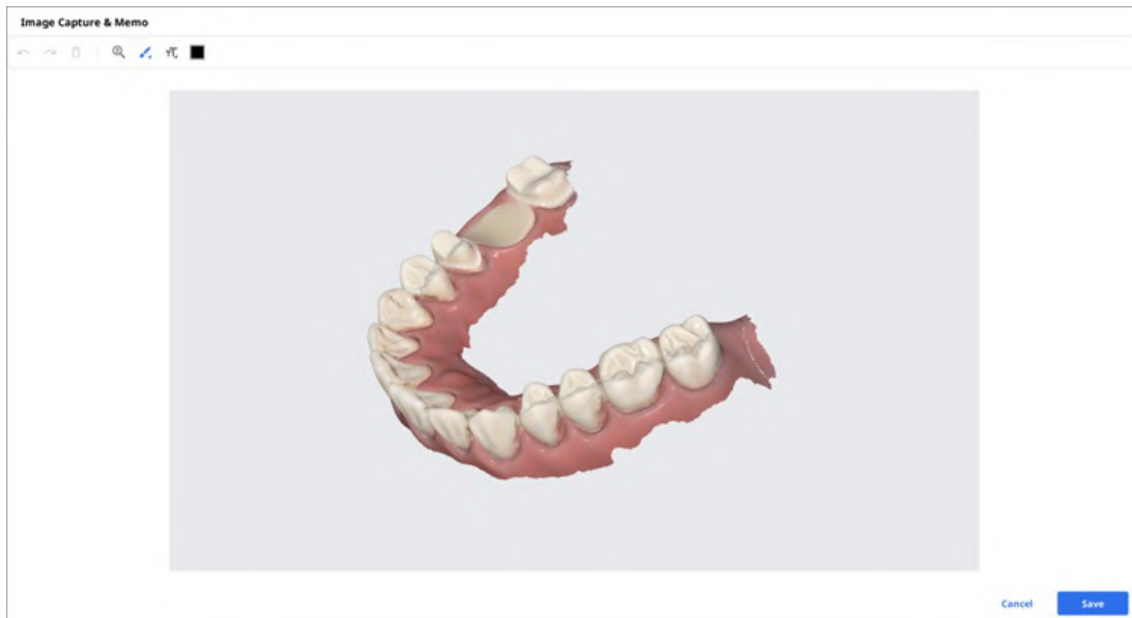

Orto-inspelning

Fånga bilderna i aktuell visningsriktning och uppifrån/nerifrån/från vänster/från höger mot den aktuella visningsriktningen.

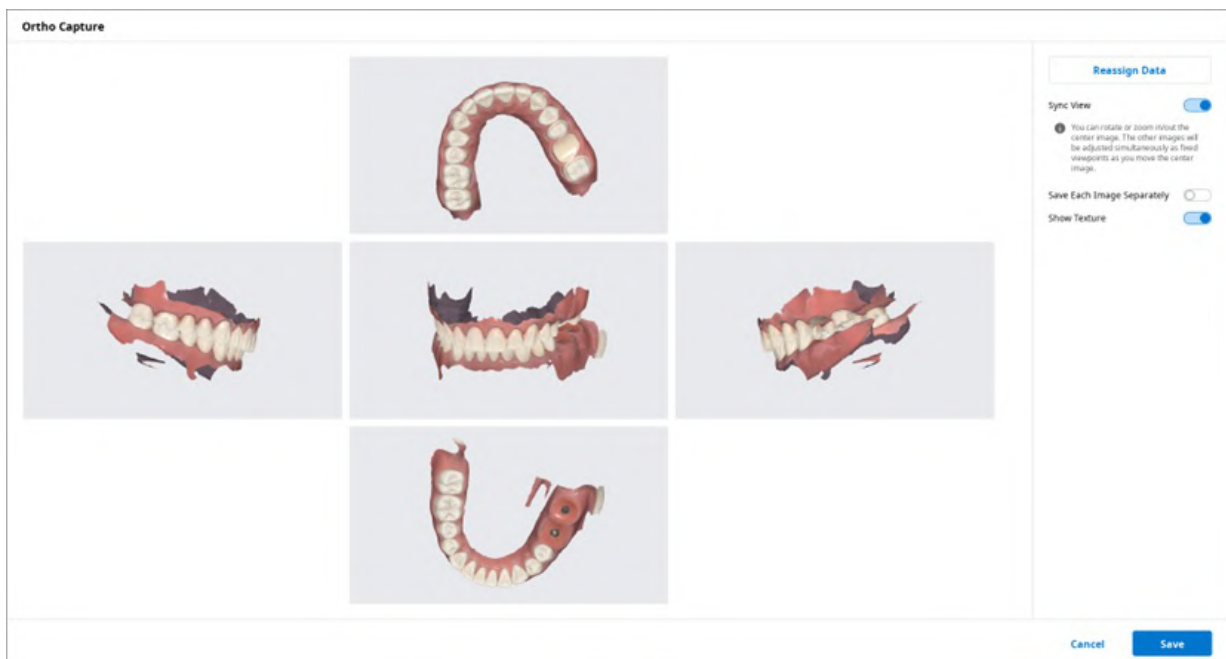

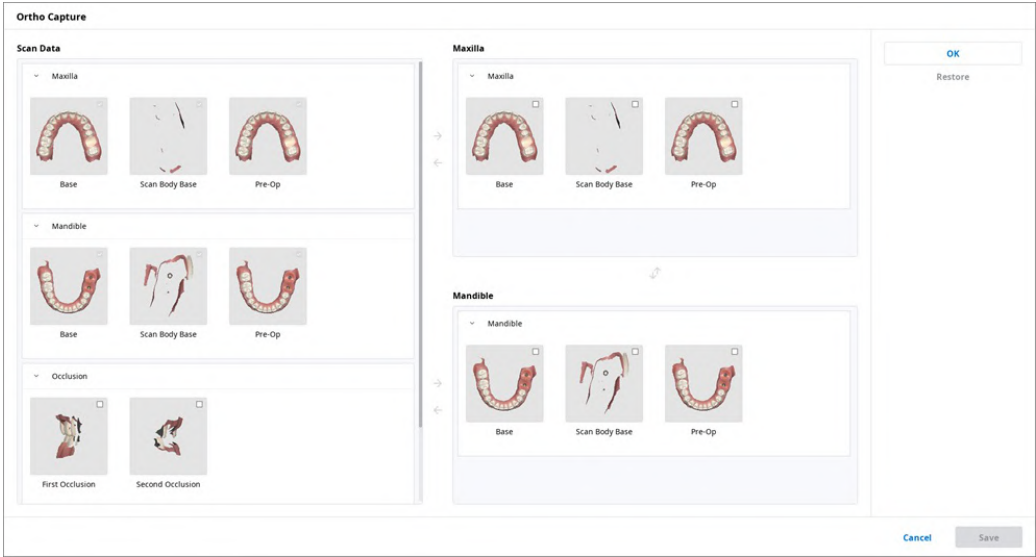Synkroniseringsvisning	När denna är aktiverad kan du rotera och zooma in/ut i mittenbilden. När du flyttar mittenbilden kommer övriga bilder samtidigt att justeras som fasta synvinklar. När denna är avaktiverad kan du panorera, rotera och zooma in/ut i alla bilder en och en.
Spara varje bild separat	Spara varje bild med högkvalitativ upplösning.
Visa textur	Slå på/av texturen för modellen.
Tilldela om data	Ändra data för överkäken/underkäken med hjälp av funktionen Tilldela om data. Du kan använda dina ändrade data för att skapa och använda resultatbilderna från en Orto-inspelning.  • Skanningsdata: Visar alla skanningsdata för fallet. • Överkäke: Visar de data du markerat för överkäken. • Underkäke: Visar de data du markerat för underkäken.


Fyll hål

Fyll hål i 3D-meshdata.



Trimning


Trimning tillhandahåller olika verktyg för dataredigering.

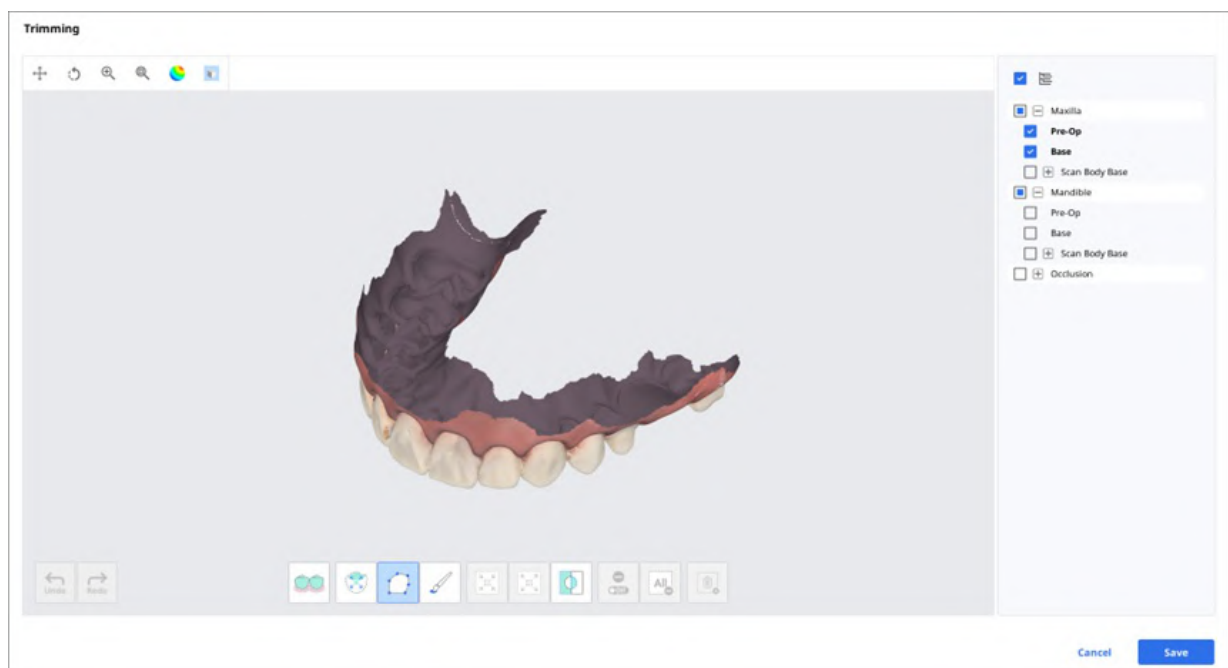

Valda 3D-meshdata kan redigeras med de olika verktygen i fönstrets nederkant.

Markering		Smart tandmarkering	Välj automatiskt alla tänder på käken, och utelämna tandkötsdelarna. Obs Den här funktionen är endast tillgänglig för skanningsdata som har hämtats med Medit Scan for Clinics med alternativet "Använd GPU" aktiverat.
		Smart enskild tandmarkering	Välj automatiskt området för en enskild tand med ett klick. Du kan klicka på eller dra tanden.
		Polyline-markering	Markera alla enheter inom en polylineform ritad på skärmen.
		Penselmarkering	Markera alla enheter på en frihandsritad väg på skärmen. Endast främre området kommer att väljas. Penseln finns i tre olika storlekar.
Justering av valt område		Krymp det valda området	Minska det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Expandera det valda området	Expandera det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Invertera det valda området	Invertera markeringen.
Avmarkera		Markera/Avmarkera	När detta är aktiverat kan du avmarkera området med hjälp av olika verktyg.
		Rensa alla markeringar	Rensa alla markerade områden.
		Radera det valda området	Radera data från det valda området.

1. Välj det område du vill trimma med områdesvalsverktygen.

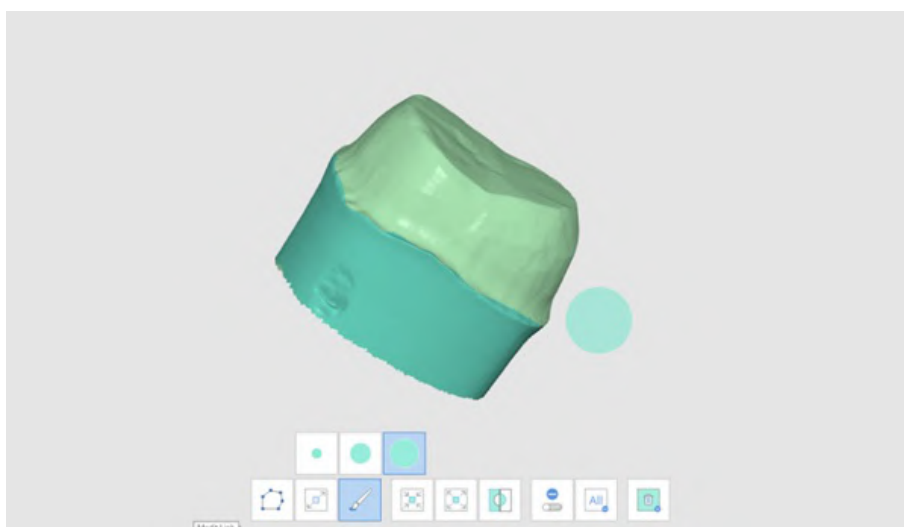


Obs


Verktøget för polylinetrimning markerar alla enheter inom en polylinjemarkering ritad på skärmen, medan verktøget för penseltrimning endast väljer ansiktsdata framifrån.

2. Du kan invertera, krympa eller utöka urvalet med följande tre verktøg.


- Invertera det valda området

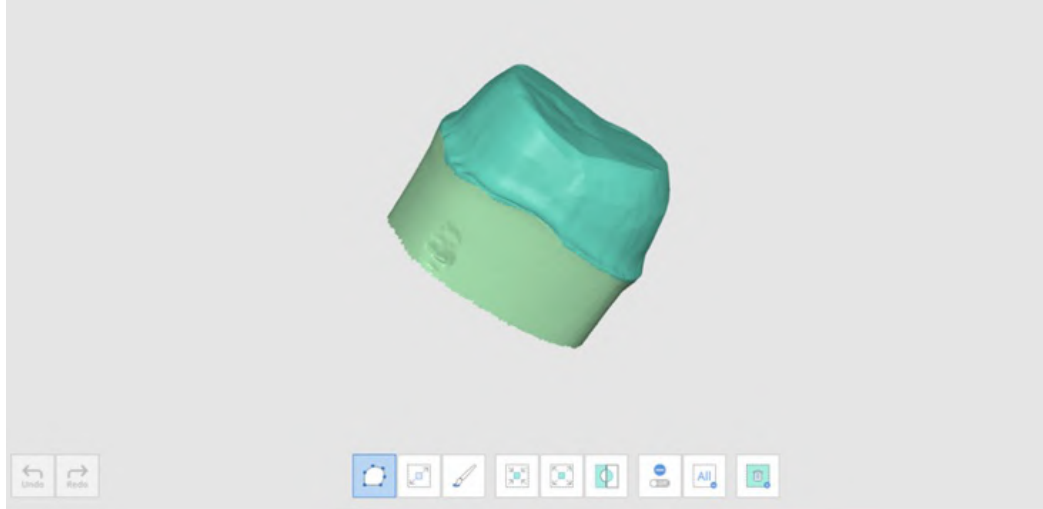

- Krymp det valda området

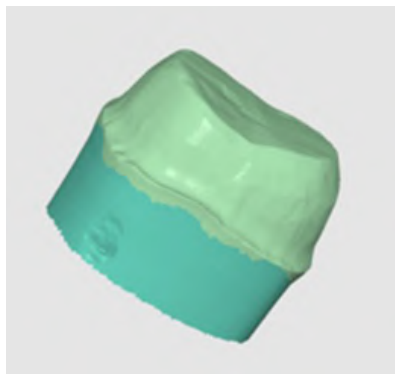


- Expandera det valda området

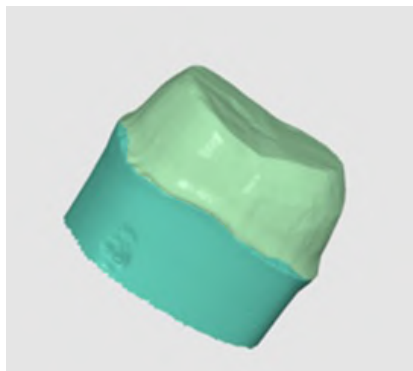



3. Du kan avmarkera de markerade områdena med verktøget Radera det valda området.

Optimera okklusionsinriktning

Optimera ocklusionsinriktning. Välj måldata och justera ocklusionsinriktningen.

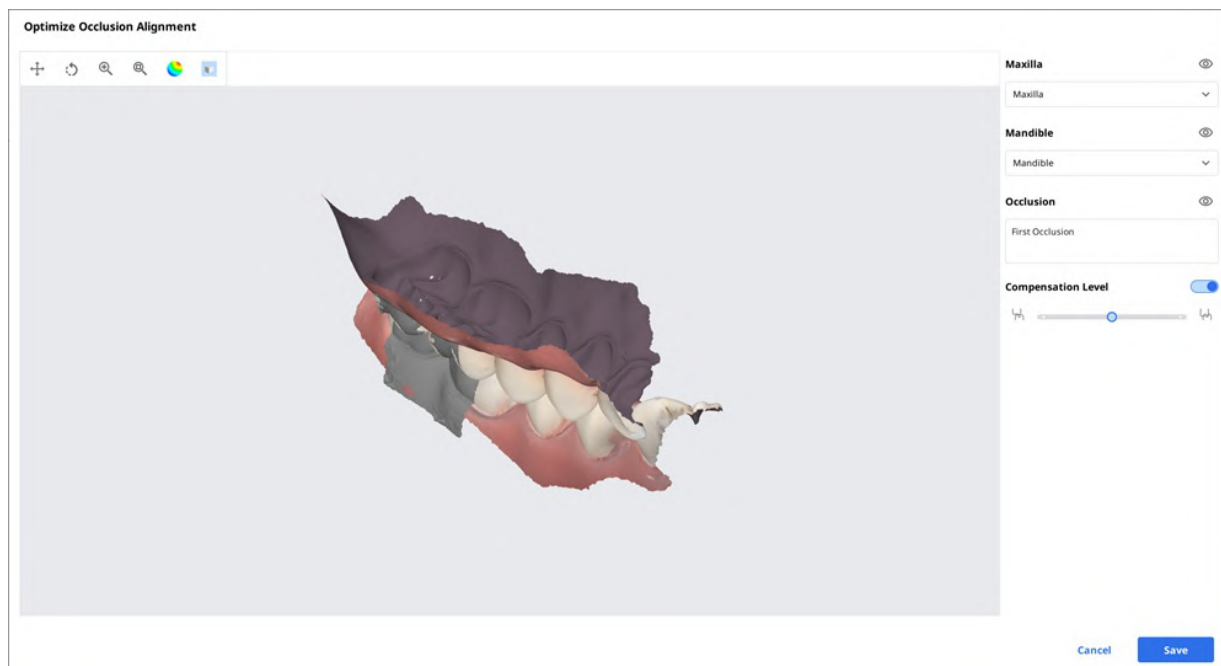


Kompensationsnivå

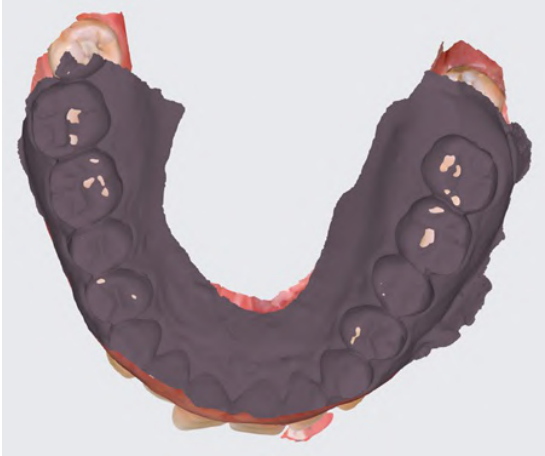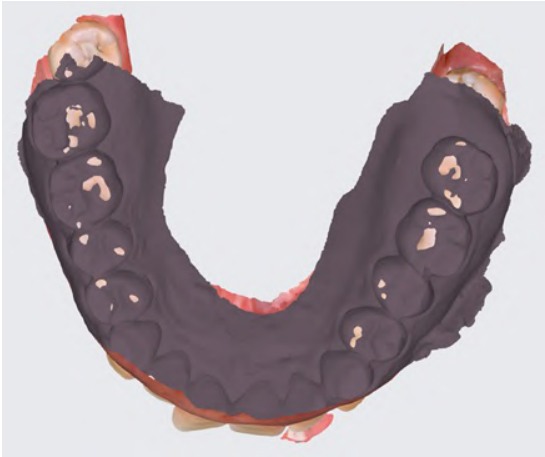Låg	Compensation Level ☒  <input type="range" value="10"/> 	
Mellan	Compensation Level ☒  <input type="range" value="50"/> 	
Hög	Compensation Level ☒  <input type="range" value="90"/> 	
Av	Compensation Level ☐  <input type="range" value="0"/> 	

Underkäkesrörelse

Du kan spela upp underkäkesrörelse som registrerats i Medit Scan for Clinics för att se de dynamiska ocklusionskontakterna mellan övre och nedre tänder.

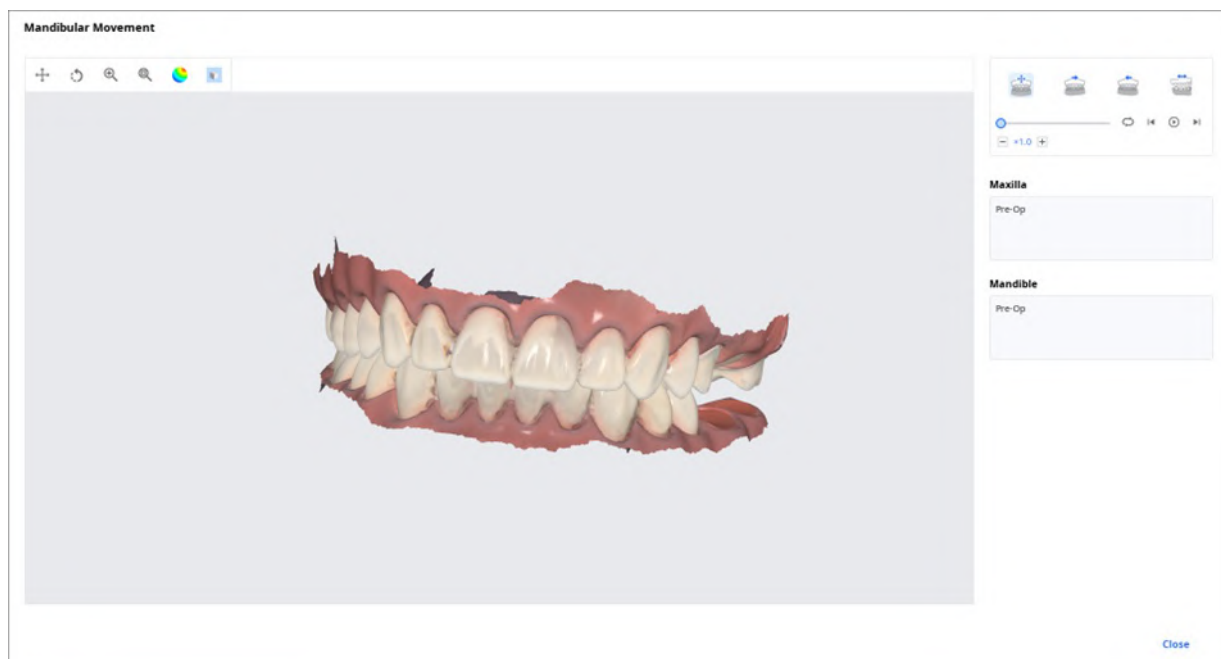

	Fri rörelse	Spela upp underkäkesrörelse.
	Vänster sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt vänster.
	Höger sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt höger.
	Utskjutande rörelse	Spela upp underkäkesrörelse framåt.

Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning

Med Medit Scan Application kan du få flera ocklusionsdataresultat.

Medit Link tillhandahåller en funktion för att hantera resultaten via "Filvisning".

Så hanterar du flera resultat


Om du får flera ocklusionsresultat med Medit Scan for Clinics kan du välja ett enda resultat i Medit Link.

Resultatlistan sorteras enligt namn där du kan välja ut ett objekt.

Den valda modellen visas i "Dataträd" och "Modellvisningsområde".



Du kan komprimera listan och ändra objektet med pilikonerna.

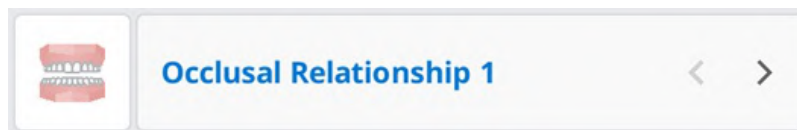

Visa alternativ

Du kan göra ändringar i Visa alternativ för att anpassa falllistans layout i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilter

Visa eller dölj filter som representerar fallets status. Dolda statusfilter visas inte på skärmen i Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Med hjälp statusfilter kan du enkelt hitta det fall du behöver.

- Klicka på statusen du vill se för att endast visa fall med denna status.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

För varje box finns följande filtreringsalternativ:

Box	Statusfilter
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabellobjekt

Välj de objekt som ska visas i fallistan i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. För att optimera användarmiljön kan du ändra ordningen på tabellobjekten och justera tabellkolumnbredden i listvisningen.

För varje box finns följande tabellalternativ:

Box	Tabellobjekt
Patient	Patientnamn/Patient-ID/Kön/Antal fall/Registreringsdatum/Födelsedatum/Senaste skanningsdatum
Case Box	Status/Fallets namn/Födelsedatum/Forminformation/Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Labbnamn
Order Box	Status/Fallets namn/Patientnamn/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Labbnamn/Begärt leveransdatum/Ändrat datum
In Box	Status/Fallets namn/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum/Ändrat datum/Kliniknamn
Work Box	Status/Fallets namn/Patientnamn/Forminformation/Ändrat datum/Begärt leveransdatum/Skanningsdatum/Kliniknamn/Beställingsdatum

Visningstyp

Välj Gallerivisning eller Listvisning som visningstyp i Case Box.

För varje box finns följande visningsalternativ:

Box	Visningalternativ
Patient	Listvisning
Case Box	Listvisning/Gallerivisning
Order Box	Listvisning
In Box	Listvisning
Work Box	Listvisning

Gruppering

Välj ett grupperingsalternativ för att klassificera och ordna om fall i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande grupperingsalternativ:

Box	Grupperingsalternativ
Case Box	Inga/Patientnamn/Skanningsdatum/Beställingsdatum
Order Box	Inga/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum
In Box	Inga/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum
Work Box	Inga/Begärt leveransdatum



Obs

Grupperingsalternativen är inte tillgängliga i Patient, Case Talk och Trash Box.

Sortering

Välj ett sorteringsalternativ för att ändra ordningen på fallen i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande sorteringsalternativ:

Box	Gruppering	Sorteringsalternativ
Patient	-	Patientnamn/Patient-ID/Födelsedatum/Registreringsdatum/Antal fall/Senaste skanningsdatum
Case Box	Inget	Patientnamn/Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Patientens namn	Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Skanningsdatum	Patientens namn/Ändrat datum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Ändrat datum/Skanningsdatum/Labbnamn
Order Box	Inget	Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Skanningsdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Begärt leveransdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
In Box	Inget	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Kliniknamn
Work Box	Inget	Patientens namn/Ändrat datum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Ändrat datum/Kliniknamn



Sorteringsalternativen är inte tillgängliga i Case Talk och Trash Box.

Filtrering och Sök

Filtrering enligt patient

Filtrera och visa fall enligt patientnamn. Du kan skapa en lista genom att filtrera fram endast de patienter du ska arbeta med.

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user icon. The main area has a 'Case Box' section with a search input field containing 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Ange patientens namn.

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' search. The search term 'won' is entered. The dropdown lists five results, each with a checkbox and a text string: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

2. Välj patienter bland sökresultaten nedan.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Endast fall för valda patienter visas i listan.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

+ New Case

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

View Options

Total Cases: 20

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrering enligt datum

Filtrera och visa fall senast ändrade inom den angivna perioden.

1. Klicka på filtret för tidslängd.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Välj tidslängd i listan.

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som senast ändrats inom perioden.
- Idag: Visa de fall som ändrats senast idag.
- Igår: Visa de fall som ändrats senast igår.
- Senaste 7 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna exklusive idag.
- Denna månad: Visa de fall som senast ändrats under den här månaden.
- Föregående månad: Visa de fall som senast ändrats under förra månaden.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Avancerade sökfunktioner

Använd sökfunktionerna för att snabbt hitta den information du vill ha.

All

▼

Search / Contains

Q

Följande sökkriterier är tillgängliga för varje ruta:

Patient	Allt, patientnamn, patient-ID
Case Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Forminformation, Labbnamn
Order Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Labbnamn, Beställnings-ID
In Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Beställnings-ID
Work Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Forminformation, Kliniknamn, Beställnings-ID
Case Talk	Case Talk-namn (Innehåller), Patientens namn (Lika med)
Trash Box (Klinik)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Labbnamn, Raderad av
Trash Box (Labb)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Raderad av

Du kan välja Sökkriterium och välja något av alternativen Innehåll och Lika med.

All

▼

All / Contains

Q

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall

Skapa fall

Skapa fall i Case Box (klinik)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Ange grundläggande information, såsom patientens namn och fallets namn.
 - Om du anger ett namn som inte finns på patientlistan kommer en ny patient att läggas till.
 - Om du anger ett namn som finns i patientlistan kan du välja det från listan.
 - Om du registrerar ett fall för en befintlig patient, klicka på ikonen Patientlista för att välja en befintlig patient.



- I dialogrutan Patientlista kan du registrera en ny patient eller redigera informationen för en befintlig patient.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Klicka på "Registrera & Skanna" för att slutföra fallregistreringen och börja sedan skanna.
 - **Registrera** Du omdirigeras till huvudsidan. Detta är användbart när du registrerar flera fall.
 - **Registrera & Skanna**: Gå till filen Form för att registrera forminformation för fallet.

Skapa fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a small circular icon to the left.
- Footer**: A note stating "You can add up to 10 tags of 100 characters or less." and two buttons: "Cancel" and "Register".

2. Ange eller välj kliniknamn.
3. Ange patientens namn och fallets namn. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Ange förväntat leveransdatum med avseende på slutdatumet för arbetet.
5. När du har registrerat fallet kommer du att omdirigeras till huvudsidan.

Redigera fall

Skapa fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Klicka på ikonen "Sök" för att ändra patientens namn. Observera att det inte går att redigera direkt; leta istället upp ett patientnamn som du vill ersätta det nuvarande med och redigera sedan patientinformationen från listan.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Leta upp namnet på en patient som du vill ersätta med den nuvarande.
- För att skapa en ny patient, klicka på knappen "Ny patient".
- Använd knappen "Redigera" för att ändra den registrerade informationen om patienten.
- Klicka på "Tillämpa" för att slutföra processen.

Redigera fall i Work Box (Lab)

- Klicka på ikonen "Redigera" bredvid falllets namn.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Klicka på "Tillämpa" när du redigerat klart.



Du kan inte redigera information på fall som tagits emot genom beställning i In Box.

Klona fall

Klona fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Du kommer att tillfrågas vilken typ av information du vill klona till det nya fallet.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Välj om du vill replikera endast forminformation eller alla data.
4. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".

Klona fall i Work Box (Lab)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Duplicera alla data för att skapa ett nytt fall.
3. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".


Radera fall

Radera fall (Klinik och Labb)

1. Klicka på ikonen "Radera".



2. Klicka på ikonen "OK" för att radera fallet.

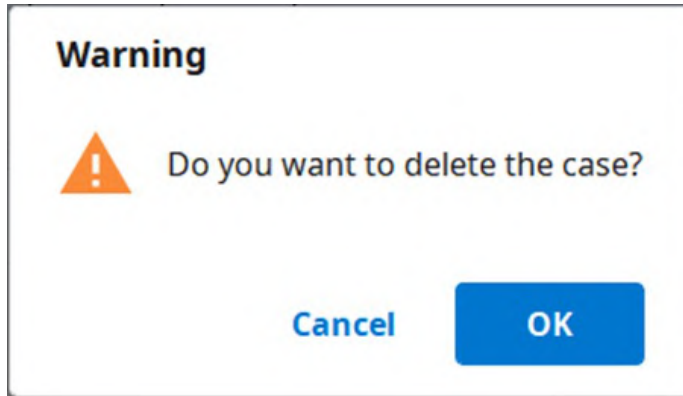

3. Raderade fall flyttas till Trash Box och kan återställas vid behov.

Forminformation

Du kan ange formulärinformationen baserat på det anslutna programmet och behandlingstypen.

Informationen du anger kommer att användas som grundläggande information för skanning, CAD och beställning.

Registrering av forminformation i Case Box

Gå in på fliken Form

1. Välj om du ska mata in behandlingsinformation för tänder eller käke.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
3. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Registrering av forminformation i Work Box

Gå in på fliken Form


1. Välj det skanningsprogram du vill använda.
2. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
3. Metoderna kan skilja sig åt beroende på valt skanningsprogram.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tänder	☐	☐
Käke	☐	☐
Flexibel multi-die	☒	☐
Multi-Die	☒	☐

4. Välj tandnummer, käknummer eller nummer på gjutform för skanningsprocessen.
5. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
6. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Lägg till tänder till en brygga

Du kan lägga till flera tänder till en brygga när samma material appliceras på flera närliggande tänder. Klicka på bryggikonen bredvid de valda tänderna för att lägga till eller ta bort dem.

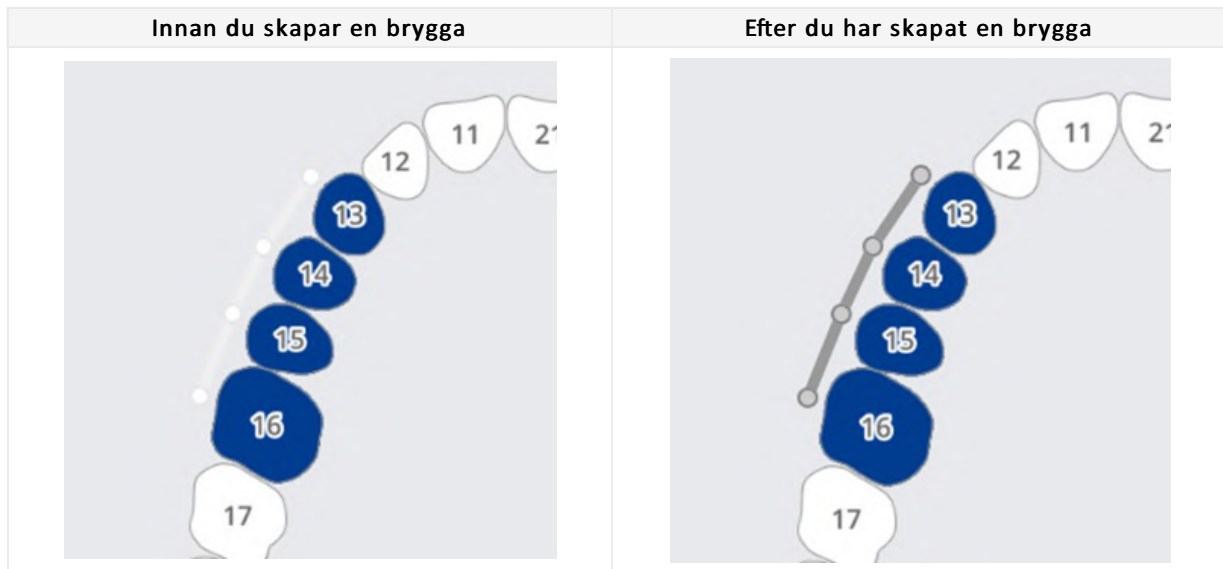

Inställning av skanningsalternativ

Det finns olika skanningsalternativ beroende på vilket program du arbetar med.

De valda skanningsalternativen skickas till varje skanningsprogram.

Medit Scan for Labs

Allmänna alternativ

	Närliggande tänder	Markera preparerade och närliggande tänder och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Antagonist	Markera antagonisten automatiskt och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Artikulator	Visningsalternativ för att välja artikulator i skanningsprogrammet.
	Röreslemarkör	Med denna kan du använda skanningsstrategin "Käkrörelse" i skanningsprogrammet.

Alternativ enligt tänder

	Skanningskropp	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av skanningskroppar i skanningsprogrammet.
	Pre-op-skanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av Pre-Op-modell i skanningsprogrammet.
	Vaxkopieskanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av vaxkopior i skanningsprogrammet.

Lägg till i Favoriter

Lägg till produkter som favoriter för att snabbt kunna välja dem senare.

Listan med favoriter kan hanteras som en mall och delas via export- och importfunktionerna.

Lägg till i Favoriter

1. Välj tandnummer.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Typ – Metod – Material – Nyans kan registreras som favorit även om inte alla är markerade.
3. Klicka på ikonen "Stjärna".



4. En kombination av de valda parametrarna, exklusive tandnummer, läggs till i din favoritlista.

Hantera favoritmallar

Du kan registrera, hantera och dela olika typer av mallar.

Lägg till	Lägg till en ny mall.
Döp om	Döp om den nuvarande mallen.
Radera	Radera den nuvarande mallen.
Exportera	Exportera den nuvarande mallen till en fil.
Importera	Importera en filmall.

Jobba med skanning/CAD

Skanningsprocess

Baserat på inmatad information kan du påbörja skanning.

1. Ange/spara behandlingsinformation och välj nödvändiga skanningsalternativ.
2. Klicka på knappen "Skanna" i fönstrets övre högra hörn.

CAD-process


Medit Link tillhandahåller integreringsappen DentalCAD för sammankoppling av Medit Link och DentalCAD.

1. Installera appen DentalCAD Integration App Box.
2. Gå till falldetaljer och klicka på ikonen för appen DentalCAD Integration i Snabbstartaren.
3. Ange sökvägen till DentalCAD-appen som är installerad på din dator i popup-dialogrutan.
4. Ange falldetaljer för det skannade fallet och klicka på ikonen för appen DentalCAD Integration för att öppna en dialogruta där du kan skapa en dentalProject-fil.
5. Registrera forminformation för DentalCAD och klicka på "Öppna" för att öppna CAD-programmet.
6. Om du installerar appen DentalDB Integration kommer CAD-resultaten automatiskt att sparas via den angivna sökvägen i exocad. (Endast labbkonton)

Använda tilläggsappar

Snabbstartaren som tilläggsapp


Du kan köra olika tilläggsappar direkt genom att klicka på ikonerna för de installerade apparna i Snabbstartaren. Du kan dra appikonerna för att ändra ordningen på dem.

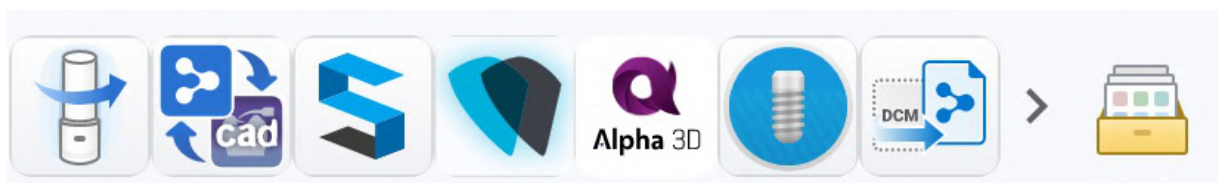


Hantering av appstarter

App Launcher Management

Quick Launcher

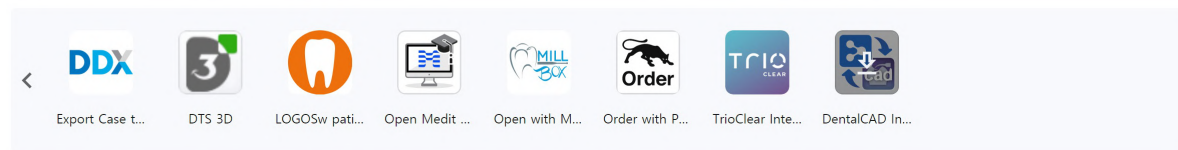

All Apps

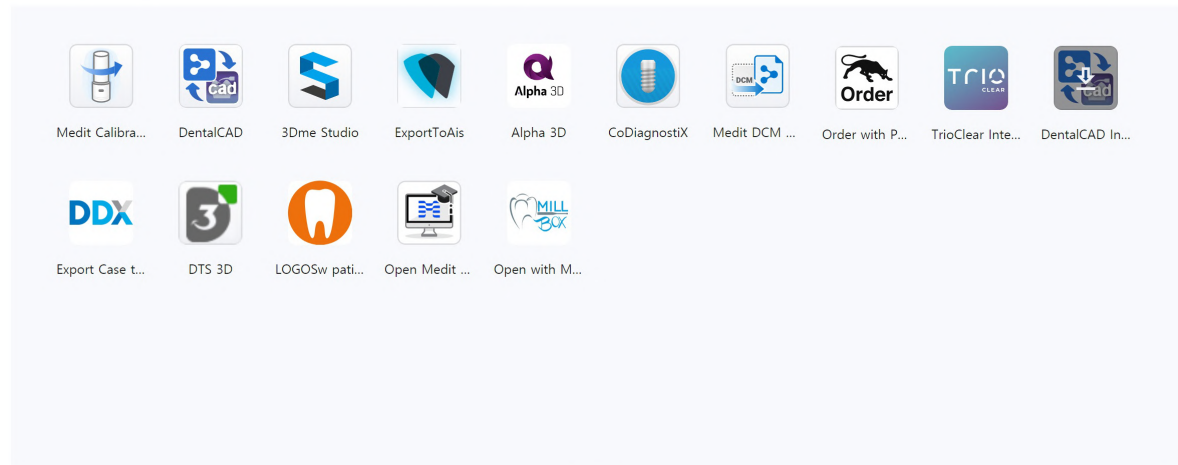

Close

Snabbstartaren

Du kan välja vilka appar som ska visas i Snabbstartaren. Du kan ändra ordningen på appikonerna genom att dra dem, eller så kan du organisera dem genom att skapa mappar där du grupperar liknande appar.

Alla appar

Visar alla appar du har installerat visas. Du kan högerklicka på en appikon för att lägga till appen i Snabbstartaren. Om du högerklickar i snabbmenyn kan du också välja att köra, installera eller avinstallera en app.

Hämta resultatfiler

Exportera skanningsresultatfiler

Förutom att dela resultat med partners genom beställningar, kan du med Medit Link också lagra dina resultatfiler i önskat filformat med hjälp av exportfunktionen.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Exportera filer till	Ange sökvägen till platsen där du vill lagra resultaten.
Mappnamn	Systemet skapar en ny mapp och lagrar alla resultatfiler i den. Standardnamnet på mappen bestäms av namnregeln. Du kan också ändra mappnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för mappnamn.
Filnamn	Ställ in filnamnet för resultatet. Namnregeln anger standardnamnet på filen. Du kan också ändra filnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för filnamn
Typ	Välj det designprogram du vill använda. Medit Link justerar automatiskt filerna enligt dina val, och du kan börja designa utan att behöva ytterligare axeljustering.
Meshformat	Ange formatet för mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera filer	Komprimera alla resultat till en enda fil.
Kombinera individuell mesh	Kombinera resultatet av överkäke eller underkäke med en individuell tand. Rekommenderas när det inte går att importera flera filer till ett program.
Exportera alla ocklusiva förhållanden	När skanningsappen skapar flera ocklusionsresultat kan du exportera alla ocklusionsresultat på en gång.
Spara fallinformation som PDF	Spara fallinformation med resultat som en PDF.

Exportera resultatfiler från fallista

Du kan exportera resultatfiler för ett fall eller flera fall samtidigt med alternativet "Exportera" ovanför fallistan i Case Box och Work Box.

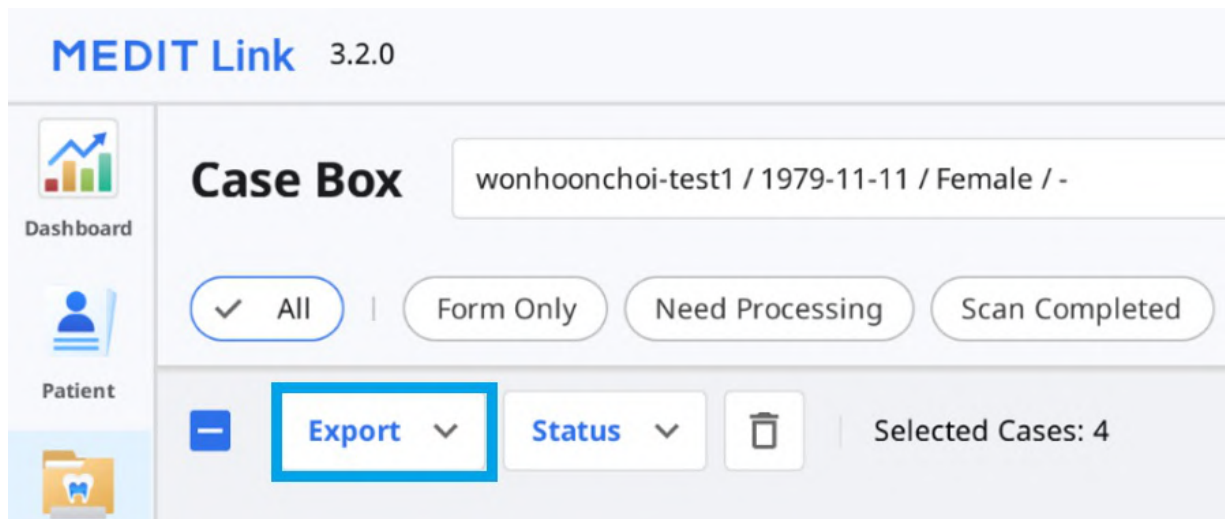

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Markera alla fall i listan som du vill exportera resultatfiler från.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Klicka på "Exportera" och välj "Resultatfiler".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Ange målmap, filtyp, nätformat och bildformat och välj exportalternativ på fliken "Alternativ".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type ⓘ

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



Fälten "Mappnamn" och "Filnamn" kan inte redigeras vid export av filer för flera fall. Mappnamnet och filnamnet skapas automatiskt enligt reglerna du anger i alternativen för "Regel för mappnamn" och "Regler för filnamn" i Inställningar > Exporteringsalternativ.

- Klicka på "Exportera".
- Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exportera resultatfiler från Filvisning

Du kan exportera skanningsresultatfiler för ett fall med ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.

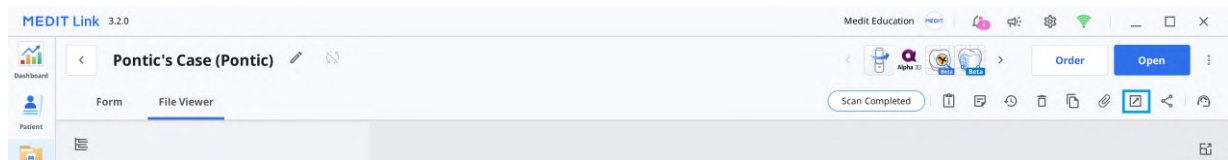

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.

4. Ange målmapp, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ **PLY** ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ **PNG** ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. På fliken "Fyllista" kan du välja de filer som krävs för fallet genom att avmarkera onödiga filer.

Export Files in This Case

Options File List

- ☒ 
- ☒  Maxilla
 - ☒ Base
- ☒  Mandible
 - ☒ Base
- ☒  Occlusion
 - ☒ First Occlusion
 - ☒ Second Occlusion
- ☒  Dynamic Occlusion
 - ☒  Free
 - ☒ Maxilla
 - ☒ Mandible
- ☒  Face Scan Data
 - ☒ Face Scan Data

Close **Export**

6. Klicka på "Exportera".
7. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Exportera resultatfiler från dataträd


Du kan exportera en eller flera filer i en specifik datagrupp i den expanderade menyn i filvisaren.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The left sidebar has icons for Dashboard, Patient, Case Box (highlighted), Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area is titled 'Pontic's Case (Pontic)' and has two tabs: 'Form' and 'File Viewer' (selected). The 'File Viewer' tab shows a tree view of data groups. A context menu is open next to the 'Maxilla' group, with options: 'Show This Only', 'Hide', 'Export' (highlighted with a red box), and 'Delete'. The 'Export' option is also highlighted with a red box.

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen med tre punkter bredvid datagruppen eller en enhet i dataträdet på fliken Filvisning.



4. Klicka sedan på "Exportera".

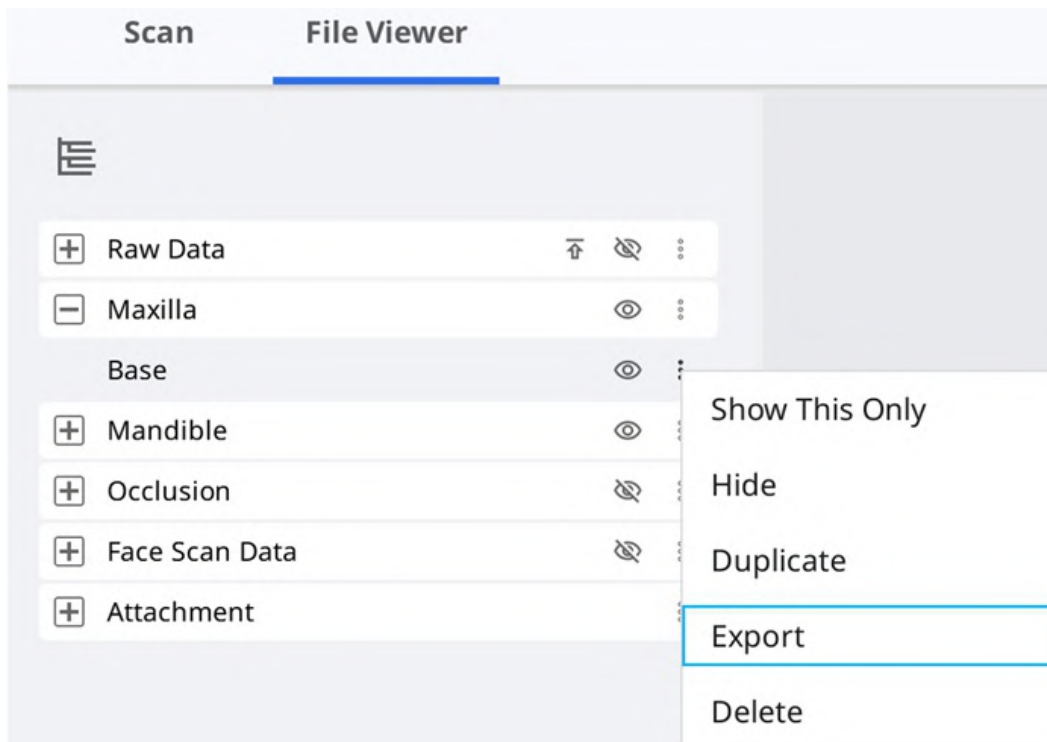

5. Ange målmapp, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Du kan se att endast de filer du valt i dataträdet är markerade i fillistan.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Klicka på "Exportera".
8. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportera fallista som CSV

I Medit Link finns en funktion för att exportera fallistan i CSV-format.

Du kan exportera fallistan med grundläggande information för enkel hantering av fall.

1. Gå till Case Box, Order Box, In Box eller Work Box.
2. Välj de fall som du vill exportera.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Klicka på "Exportera" och välj "Fallista (enligt bild)" eller "Fallista (med alla objekt)".

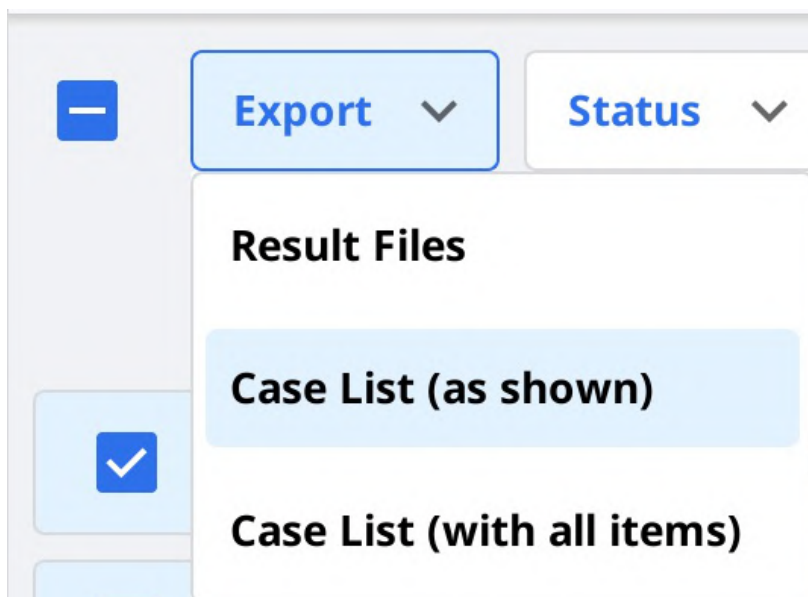

Obs

Fallista (enligt bild): Exportera fallistan med de objekt som visas på skärmen. Gå till Visa alternativ > Tabellobjekt för att visa eller dölja objekten som du vill.

Fallista (med alla objekt): Exportera fallstan med alla objekt, inklusive status, fallnamn, födelsedatum, forminformation, ändringsdatum, skanningsdatum, beställningsdatum och labbnamn.

4. Skapa en sökväg och ett filnamn och spara sedan listan.
5. Fallistan sparas som en CSV-fil.

Exportera marginallinjen


I Medit Scan for Clinics finns en funktion för att skapa marginallinje. Medit Link kan överföra denna marginallinje till CAD-programmet.

Exportera marginallinjen i färg

I allmänhet konverterar Medit Link marginallinjen i färg och exporterar resultatet tillsammans med överkäke eller underkäke. Du kan använda färginformationen för att skapa marginallinjen i CAD.

Exempel:

Överkäke

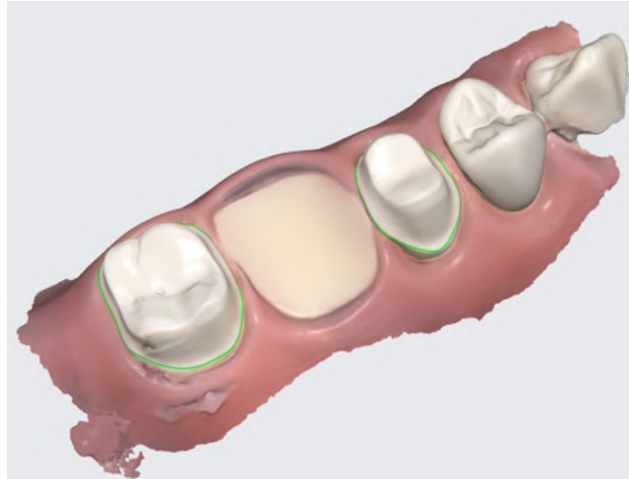

Resultat med marginallinjerna som färginformation

Obs

Denna funktion är tillgänglig för format som innehåller färginformation, som exempelvis meditMesh, OBJ och PLY. Marginallinjen konverteras inte till STL.

Obs

Typ > 3Shape stöder inte den här funktionen.


Exportera marginallinjen i färg

För exocad kan Medit Link exportera marginallinjen i formatet "~margin.xyz" så att den kan importeras direkt i exocad.

Du kan använda den här filen i exocad utan justeringar.


Exempel:

Överkäke

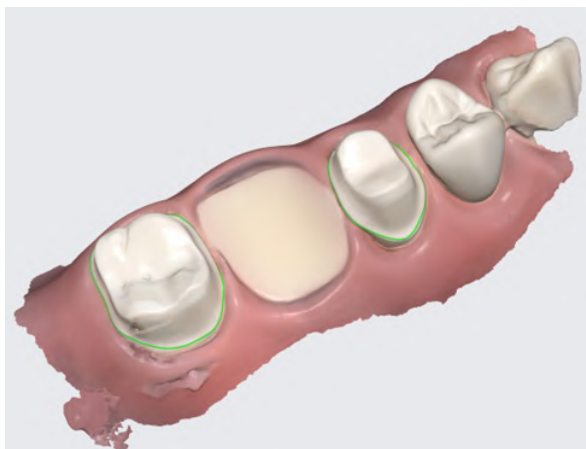

Resultat med marginallinjerna som färginformation

Marginallinje

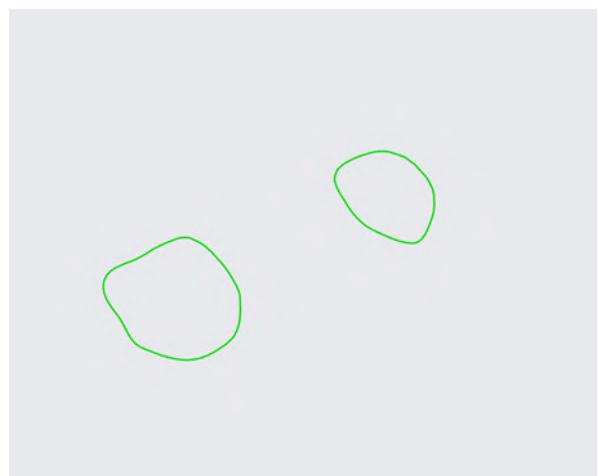

Marginallinjer exporterade som enskilda filer

Ladda ner filer från Medit Links webbsida

I Medit Link finns en nedladdningsfunktion.

Om du vill hämta resultatfilerna utan att installera Medit Link-applikationen kan du ladda ner filerna från Medit Links webbsida.




Data måste vara uppladdade i Medit Cloud för att filerna ska kunna laddas ned från webbsidan.

Nedladdningsfunktionen finns i följande meny på Medit Links webbsida.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Du hittar knappen "Ladda ner" längst upp till höger.

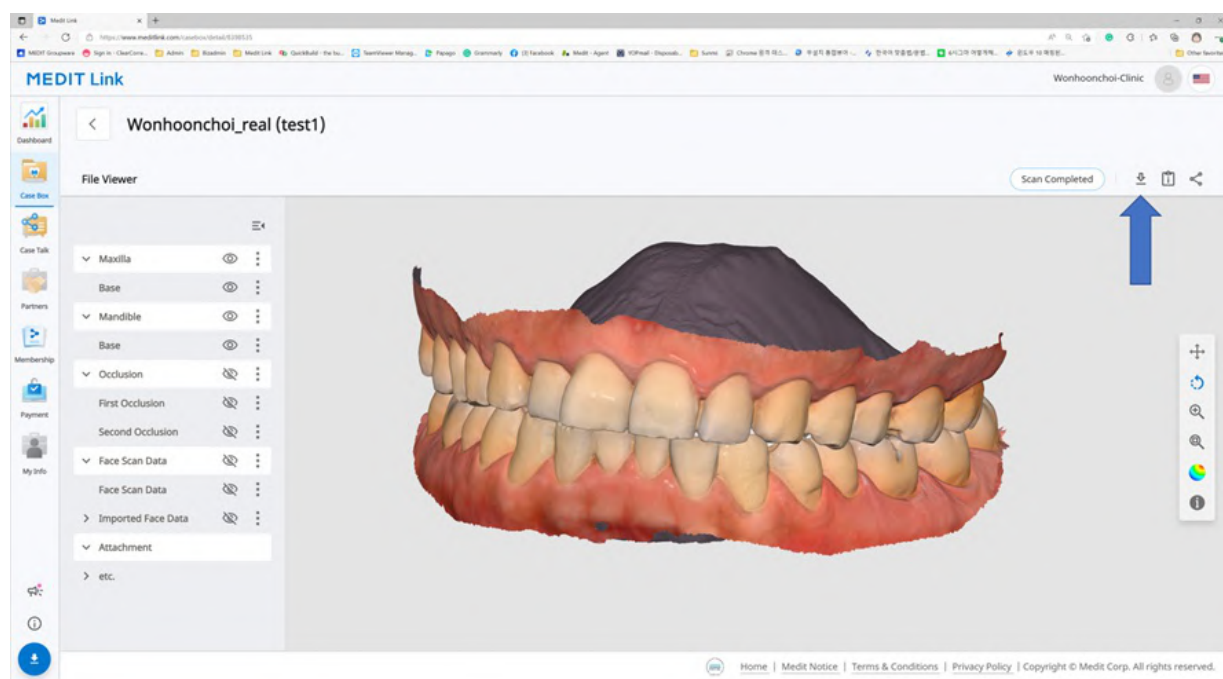

Web Viewer

När du delar ett fall via Case Talk kan du ställa in om du vill tillåta nedladdning eller inte.

Om du markerar "Ge nedladdningstillstånd" och delar ett fall kan alla användare som ansluter till den delade länken ladda ner filerna.

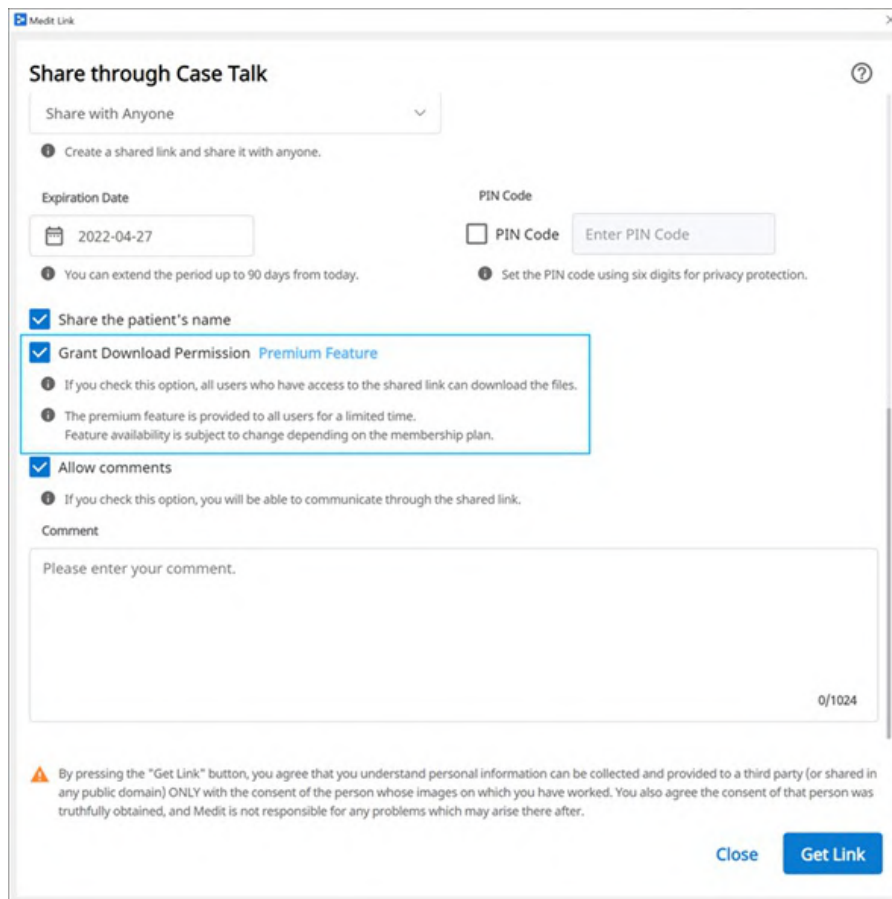

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: [] PIN Code [Enter PIN Code]

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

I Web Viewer hittar du ikonen "Ladda ner" uppe till höger.

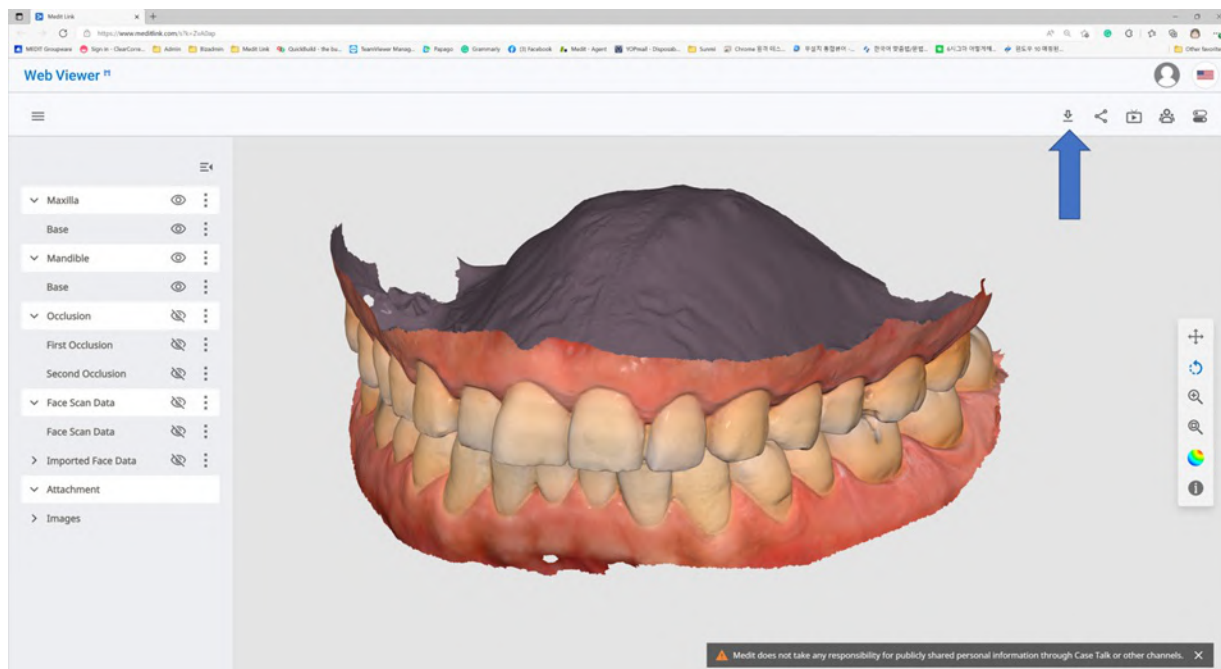

1. Klicka på "Ladda ner".



2. Välj meshformat i nedladdningsdialogrutan.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Klicka sedan på "OK".

Beställ/Hantera fall

Du kan enkelt beställa ett fall med data inhämtade från anslutna program och bifogade av användaren.

Beställa fall

Du kan lägga en beställning till dina partners i Case Box.

1. Klicka på knappen "Beställ".
2. Kontrollera vilken information som krävs för din beställning.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel


OK

3. Välj partner.
4. Kontrollera produktinformationen på fliken Beställningslista.
 - Bestäm om du vill dela patientens namn.
5. Kontrollera vilka filer du ska beställa på fliken Fyllista.
6. Ange önskat leveransdatum.
 - Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
7. Du kan lägga till ett memo och taggar till din partner för att beskriva specifika detaljer.
8. När flera ocklusionsresultat genereras från skanningsappen kan du skicka alla ocklusionsresultat på en gång genom att markera "Ordna alla ocklusiva förhållanden".

9. Lägg din beställning.


Bekräfta beställning (In Box)

- Acceptera beställning vid emottagande.
- Accepterade beställningar vidarebefordras till Work Box.

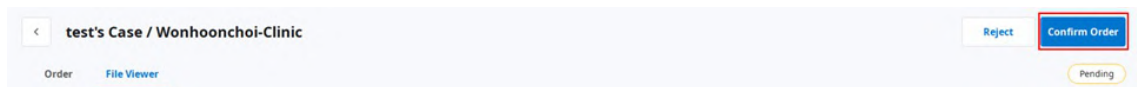


Avbryt beställning (Order Box)

- Du kan avbryta en beställning innan din partner accepterar den.
- Det går att göra en ombeställning på avbrutna fall.

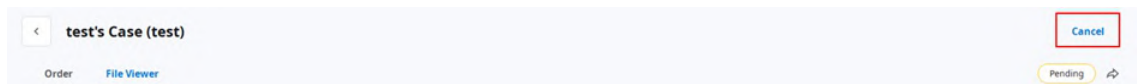


Avvisa beställning (In Box)

- Du kan avvisa en mottagen beställning.
- Det går att göra en ombeställning på avvisade fall.

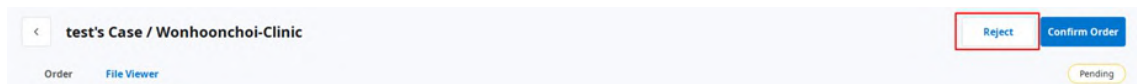

Kontrollera beställda fall

Du kan kontrollera detaljerna för fall som du beställt i Order Box på klinikkontot. Du kan också kontrollera fall som du tagit emot i In Box på labbkontot.

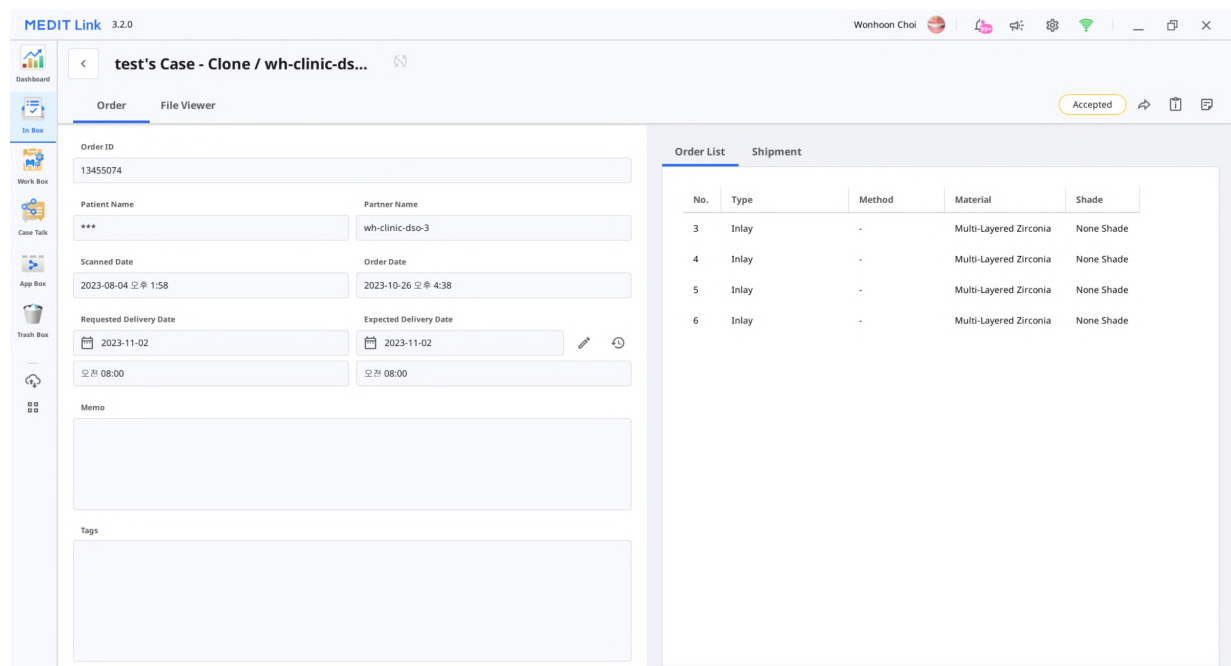

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Beställningsinformation	De uppgifter som kan ingå i beställningen är följande: Beställnings-ID/patientens namn/namn på konto/skanningsdatum/beställningsdatum/leveransens förfallodatum/memo. Du kan kontrollera detaljerna för den beställda produkten och leveransinformation.
Beställningslista	Beställningslistan visar detaljerna för den beställda produkten.
Frakt	Ange/kontrollera fraktinformationen.

Ange fraktinformation (In Box)

Ange fraktuppgifter för det slutförda fallet och påbörja frakt.

1. Klicka på fliken "Frakt".
2. Ange fraktuppgifter och klicka på "Registrera".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Den angivna informationen skickas till din partner.

Hantera leveransdatum

Du kan ställa in önskat leveransdatum när du gör en beställning. Denna information kommer att vidarebefordras till din partner.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Vid beställning i Case Box kan du ange önskat leveransdatum.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
- Ange datum/tid för då du vill ta emot produkterna och skapa beställningen.
- Du kan enkelt ställa in tiden med skjutreglaget.

Inställning av förväntat leveransdatum (labbkonto)§

- Ange önskat leveransdatum för fall du beställer i In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0


1. Verifiera det begärda leveransdatumet med partnern, du kan boka om med knappen "Redigera".



2. Ange förväntat leveransdatum med hänsyn till faktiska arbetsdagar. Vid behov kan du också lämna en

kommentar.

3. Klicka på "Tillämpa".

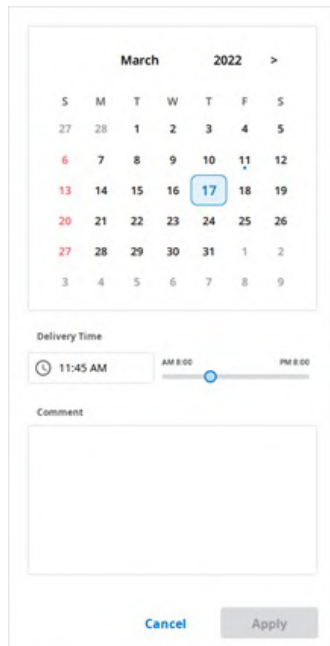

The screenshot shows a mobile application interface for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is highlighted with a blue circle. Below the calendar, there is a section for "Delivery Time" with a clock icon and a time picker set to 11:45 AM. A slider below the time picker allows selection between AM 8:00 and PM 8:00. Below the time picker is a "Comment" section with a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Apply".

4. Önskat leveransdatum och memo skickas tillsammans med beställningen.
 - Du kan kontrollera datum och anteckningar i Order Box.
 - Du kan ändra det förväntade leveransdatumet. Ändringarna kommer att vidarebefordras till din partner.
5. Du kan kontrollera fallhistoriken med knappen "Historik".



Slutföra fall

Slutfört (Work Box/In Box)


När alla uppgifter är klara, klicka på "Klar" för att slutföra fallet.

Slutför ett fall i falldetaljer

Du hittar ikonen med tre prickar till höger om knappen "Öppna" eller "Skanna om".




Slutför arbetet genom att klicka på ikonen och välja "Done".

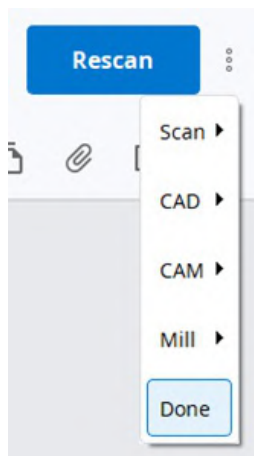

Slutför flera fall i fallistan

1. Gå till Work Box.
2. Välj alla fall som du vill slutföra.

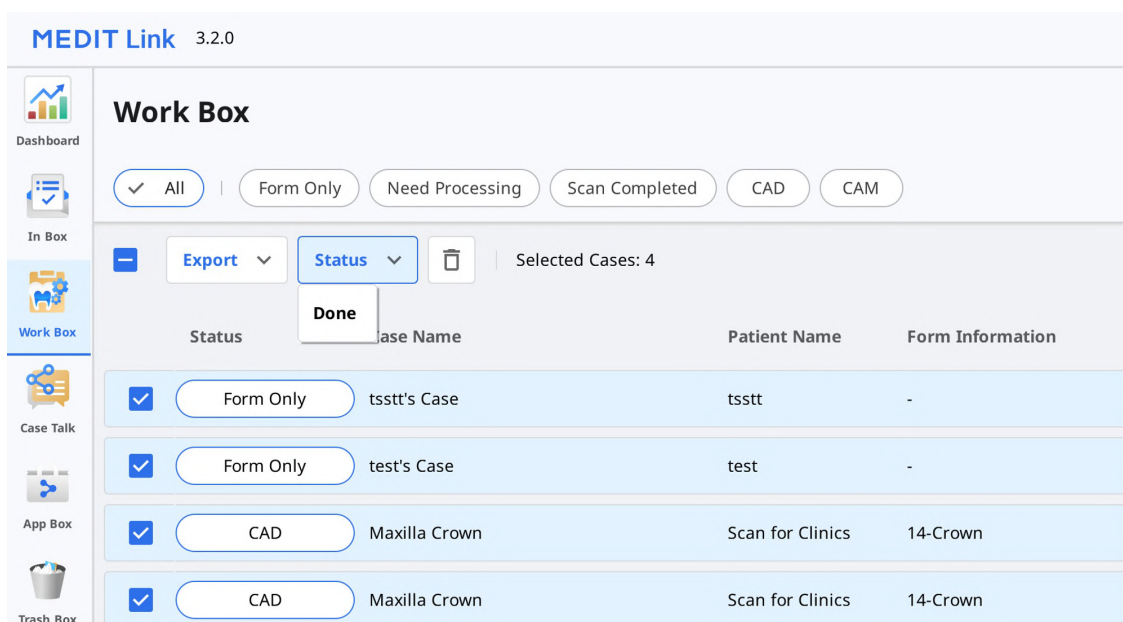


3. Klicka på "Status" och välj "Done".

Slutfört (Case Box/Order Box)

När fallet är avslutat hos labbet måste kliniken bekräfta fallet för att slutföra hela beställningsprocessen.

Kliniken hittar knappen "Bekräfta leverans" i Order Box när labbet slutfört sitt arbete.

Klicka på denna för att slutföra hela beställningsprocessen och så att fallstatusen ändras till "Case Completed".

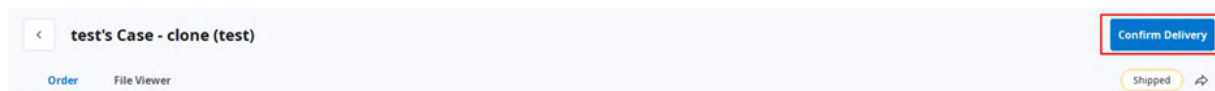

Slutför att fall som inte beställts i Case Box

Fall som inte beställts av labbet kan du slutföra i Case Box.

1. Gå till Case Box.
2. Välj fall som ska slutföras.

Case Box Patient

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Cas

Export Status Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. Klicka på "Status" och välj "Case Completed".

Kommunicera med hjälp av taggar

Du kan lägga till ytterligare information för ditt fall med hjälp av taggar och skicka dem till dina partners.

Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall

Du kan ange taggar när du skapar ett nytt fall eller redigerar fallinformation.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

Du kan enkelt söka och välja taggar som du har använt tidigare.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Lägg till taggar vid beställning

Du kan kontrollera och redigera taggar i dialogrutan Beställning när du lägger en beställning.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Kontrollera taggar på Falldetaljer

