

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

Úvod	6
Medit Link	6
Přehled služeb	6
Služba Cloud	7
Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému	7

Medit Link > Instalace

Systémové požadavky	8
Systémové požadavky pro Windows	8
Systémové požadavky pro macOS	8
Systémové požadavky pro webovou službu	8
Doporučené pro prohlížeče	8
Minimum pro mobilní zařízení	8
Instalace na Windows	9
Instalace na macOS	11

Medit Link > Začínáme

Registrovat se a Přihlásit se	15
Medit Link Webstránka	15
Registrovat se	15
Přihlašovací a uvítací stránka	17

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	19
Náhled Dashboardu	19
Medit Insights	19
Přihlásit se na odběr Medit Insights	20
Odhlásit se z odběru Medit Insights	21
Patient	22
Vyhledat podle pacienta	22
Case Box/Work Box	23
Filtrování případu	23
Filtrovat podle pacienta	23
Filtrovat podle stavu	24
Filtrovat podle trvání	25
Filtrovat podle vyhledávání	25
Detaily případu	25
Order Box/In Box	27
Detaily objednávky	27
Záložky v Order Box/In Box	27
Case Talk	28
Vytvoření Case Talk	28
Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení	29
Detaily Case Talk	30
Web Viewer	31
Anotace	32
Komentáře	33
Sdílení obrazovky v reálném čase	33
Datový strom	34

Ovládání datového stromu	
3D ovládání modelu	34
Partners	36
Vyhledávání Partnerů	36
Můj seznam partnerů	36
Pozvání partnera	37
Membership	38
Členství	38
Můj plán	39
Cloud úložiště	39
Přihlásit se k odběru	40
Odhlásit se z odběru	42
Fakturační údaje	43
Jak přidat platební metodu	43
Jak změnit platební metodu	44
Uplatnění	45
Registrovat kód kupónu	45
Aktivovat kód kupónu	46
My Info	48
Můj účet	48
Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)	48
Můj skener	49
Jiné Menu	50
Oznámení & Aktualizace	50
Informace Medit	50
Stáhnout aplikaci Medit Link	50

Medit Link > Aplikace Medit Link

Náhled	52
Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.	52
Lišta záhlaví	53
Moje informace	53
Upozornění	53
Oznámení & Aktualizace	54
Nastavení	54
Stav sítě	55
Nastavení	57
Obecné	57
Správce úložiště	58
Nastavit období	58
Místní úložiště	58
Cloud úložiště	58
Nastavit propojený program	59
Možnosti exportu	59
Nástroj pro převod případů	61
Exportovat případ	61
Importovat případ	62
Proxy možnosti	64
O programu	64
Uživatelská příručka	64
Menu	66
Dashborad	66
Patient	66
Přidat nového pacienta	67
Odstranit pacienta	67

Spojit pacienty	
Case Box/Work Box	68
Záložky v Case Box/Work Box	68
Funkce v Case Box/Work Box	69
Order Box/In Box	70
Záložky v Order Box/In Box	70
Case Talk	71
App Box	71
Trash Box	72
Správce synchronizace případů	72
Nahrát	73
Stáhnout	73
Informace Medit	74
Prohlížeč souboru	75
Datový strom	75
Nástroje pro ovládání modelu	75
3D ovládání modelu	75
Ovládání 2D obrázků	76
Funkční nástroje	76
Zachycení obrázku a Poznámka	77
Ortho zachycení	77
Vyplnit mezery	78
Ořezávání	78
Optimalizovat zarovnání okluze	81
Pohyb mandibuly	82
Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů	83
Jak spravovat více výsledků	83
Možnosti zobrazení	85
Filtry stavu	85
Typ zobrazení	86
Seskupení	86
Seřazení	86
Filtrování a vyhledávání	88
Filtrovat podle pacienta	88
Filtrovat podle data	89
Rozšířené možnosti vyhledávání	89

Medit Link > Pracovní postup

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ	91
Vytváření případů	91
Vytvořte případy v Case Box (Klinika)	91
Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)	92
Úprava případů	92
Upravit případy v Case Box (Klinika)	92
Upravit případy v Work Box (Laboratoř)	93
Klonování případů	94
Klonování případu v Case Box (Klinika)	94
Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)	94
Odstranění případu	94
Smazat případ (Klinika a Laboratoř)	95
Informace formy	96
Registrace informací formy v Case Box	96
Zadejte je na záložce Formy	96
Zadejte je na záložce CAD	96
Registrace informací formy v Work Box	96

Zadejte je na záložce Formy	
Zadejte je na záložce CAD	97
Připojení zubů do můstku	97
Nastavení možností skenování	97
Medit Scan for Labs	97
Obecné možnosti	97
Možnosti podle zubů	98
Přidání k Oblíbeným	98
Přidat do Oblíbených	98
Spravujte oblíbené šablony	98
Práce na skenování/CAD	99
Proces skenování	99
Proces CAD	99
Získání souborů s výsledky	100
Export souborů s výsledky skenování	100
Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů	101
Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru	102
Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu	104
Exportovat Seznam případů jako CSV	106
Export hranice preparace	106
Exportovat hranici preparace jako barvu	106
Exportovat hranici preparace jako soubor	107
Stáhnout soubory z webstránky Medit Link	107
Case Box/Work Box	108
Web Viewer	108
Objednávka/Správa objednávek	111
Objednávání případů	111
Potvrdit objednávku (In Box)	111
Zrušit objednávku (Order Box)	112
Odmítnout objednávku (In Box)	112
Kontrola objednaných případů	112
Zadání informací o doručení (In Box)	112
Správa data doručení	113
Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)	113
Dokončování případu	114
Dokončit (Work Box/In Box)	115
Dokončete případ z detailu případu	115
Dokončit více případů ze seznamu případů	115
Dokončit (Case Box/Order Box)	115
Dokončete neobjednaný případ v Case Box	116
Komunikujte pomocí značek	117
Přidejte značky při vytváření nového případu	117
Přidejte značky při objednávce	117
Zkontrolujte značky na detailech případu	118

Úvod

Medit Link

Medit Link je nástroj pro spolupráci navržený tak, aby usnadnil komunikaci mezi klinikami a laboratořemi a zajistil tak optimalizovaný pracovní postup pro každou stranu.

Nabízí diferencované funkce podle typu a oprávnění každého účtu. Program poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu pracovního postupu - od skenování orálními a modelovými skenery, objednávání případu až po navrhování a výrobu protéz.

Medit Link se skládá z webové služby a počítačové aplikace.

Přehled služeb

		Web	Aplikace
		• Zaregistrujte se a spravujte účet • Hledat • Vyhledávejte a spravujte partnery • Sdílejte případy prostřednictvím Web Viewer s odkazem ke sdílení • Přístup k případům vytvořeným z aplikace • Spravujte objednávky	• Vložte informace formy • Skenujte • Spravujte objednávky • Propojte s CAD • Spravujte pacienty
Klinika	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši kliniku a sdílejte případy. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte, propojte s CAD, zadávejte objednávky a spravujte pacienty. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Člen	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box
Laboratoř	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši laboratoř a sdílejte případy. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte, propojte s CAD a spravujte objednávky. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

	Člen	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
--	------	--	---

Služba Cloud

Medit Link podporuje automatické nahrávání/stahování databází a souborů prostřednictvím AWS (Amazon Web Services).

Data uložena v cloudu jsou automaticky synchronizována s počítači mnoha uživatelů v organizaci s tím, že může existovat přístup k těm samým datům z jednoho počítače kdykoliv. Cloudové zálohování a obnova uchová všechna vaše data v bezpečí. Uchová vaše data v bezpečí i v případě ztráty dat v důsledku náhlého selhání počítače.

Cloudová služba umožňuje partnerským zubařům a laboratořím rychle sdílet data, aniž by se museli zatěžovat e-mailem nebo manuálním přenosem skenů. Všechna data, včetně informací o pacientech, jsou bezpečně šifrována, ukládána a přenášena. Medit dodržuje lékařské zákony a předpisy, jako je HIPAA a GDPR.

Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému

Medit Link nabízí vlastní objednávkový systém.

- Medit Link umožňuje uživatelům navazovat partnerství mezi zubními lékaři a dentálními laboratořemi a zároveň rychle a snadno sdílet data.
- Můžete kontrolovat a spravovat stav objednávky.

Systémové požadavky

Poznámka

Chcete-li se skenerem používat skenovací software, přečtěte si prosím systémové požadavky pro Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.

Systémové požadavky pro Windows

	Notebook & Stolní počítač
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz nebo vyšší
RAM	16 GB nebo více
Grafika	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) nebo vyšší / nebo ekvivalentní AMD video karta
OS	Windows 10 64 Bit (nedostupný v 32 Bit) nebo vyšší

Systémové požadavky pro macOS

	Mac
Procesor	M1 s 8-jádry, 7-jádrovým GPU a 16-jádrovým Neural Engine
RAM	16 GB nebo více
OS	Monterey 12

Systémové požadavky pro webovou službu

Doporučené pro prohlížeče

	Prohlížeče
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pro mobilní zařízení

	Android	iOS
Zařízení	Ekvivalent Galaxy S7 nebo vyšší	Ekvivalent iPhone 7 nebo vyšší
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB nebo více	2 GB nebo více
AP	Vyšší než Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalace na Windows

Medit Link je nainstalován jako balíček s programy pro získávání skenů - Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.


1. Spustíte Medit_LinkSetup.exe.
2. Vyberte jazyk instalace.
3. Vyberte složku pro instalaci Medit Link. Přečtěte si prosím licenční podmínky, odsouhlaste je a klikněte na „INSTALOVAT“.

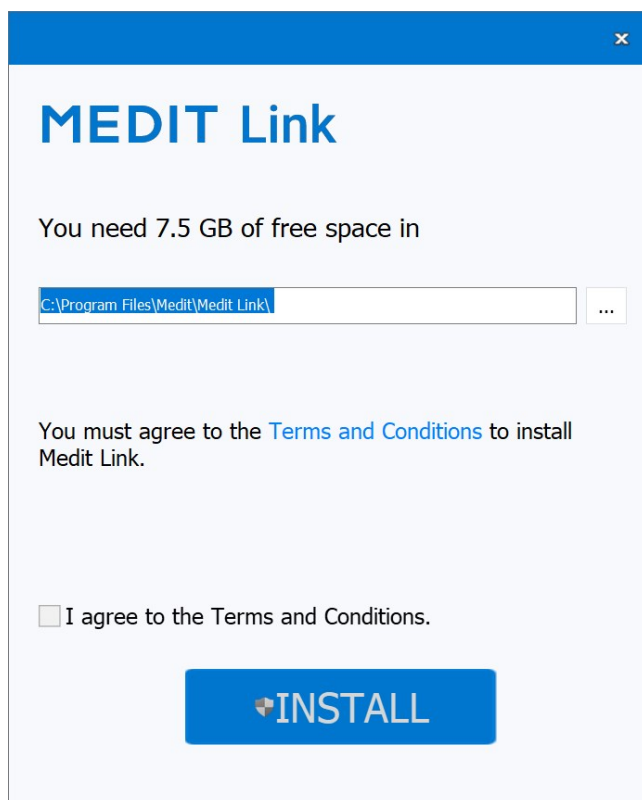

4. Před pokračováním k dalšímu kroku se ujistěte, že je kabel skeneru odpojen od počítače. Instalace nemusí pokračovat, pokud je skener připojen k počítači.
5. Program se nainstaluje automaticky a může to trvat několik minut. Nevypínejte ani neodpojujte počítač, dokud nebude instalace dokončena.

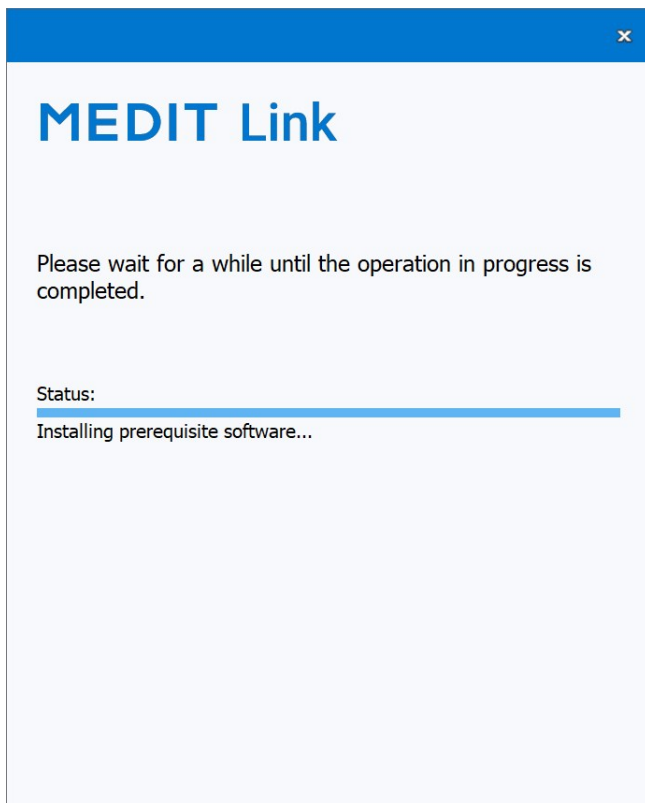

6. Po dokončení instalace restartujte počítač, prosím. Pokud skener nemáte, můžete pokračovat dále také bez restartování počítače.

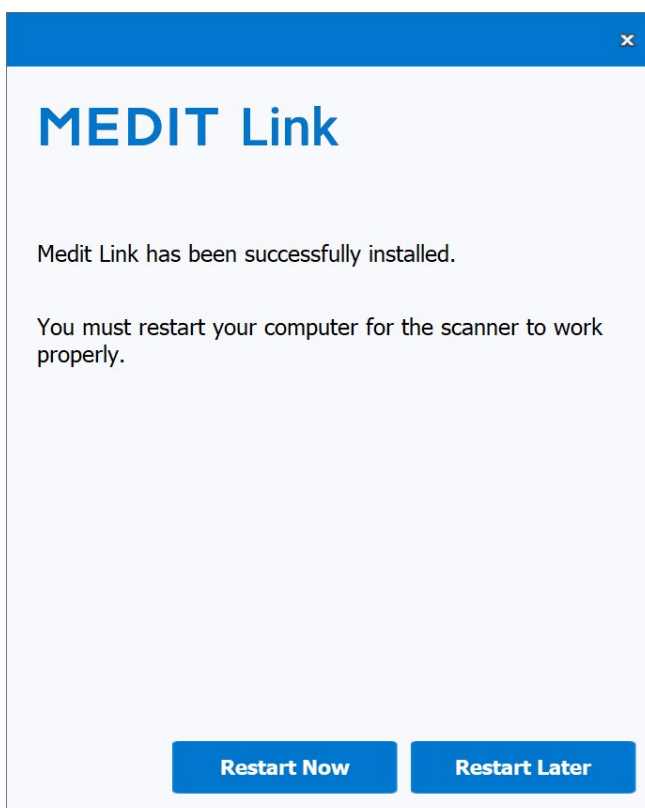


 Poznámka

Pokud po dokončení instalace nerestartujete počítač, skener nemusí fungovat správně.


Instalace na macOS

Medit Link je nainstalován jako balíček s Medit Scan for Clinics.


1. Spusťte Medit_Link_x.x.x.pkg a klikněte na „Pokračovat“.

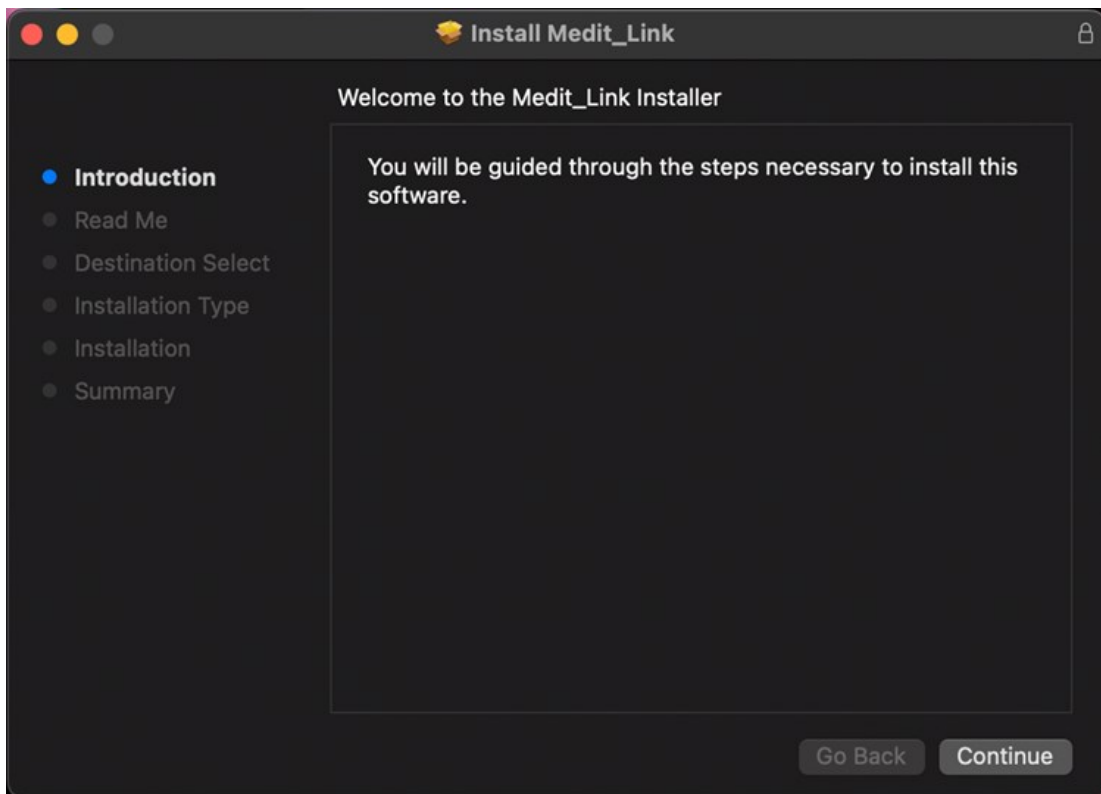


2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem a klikněte na „Pokračovat“.

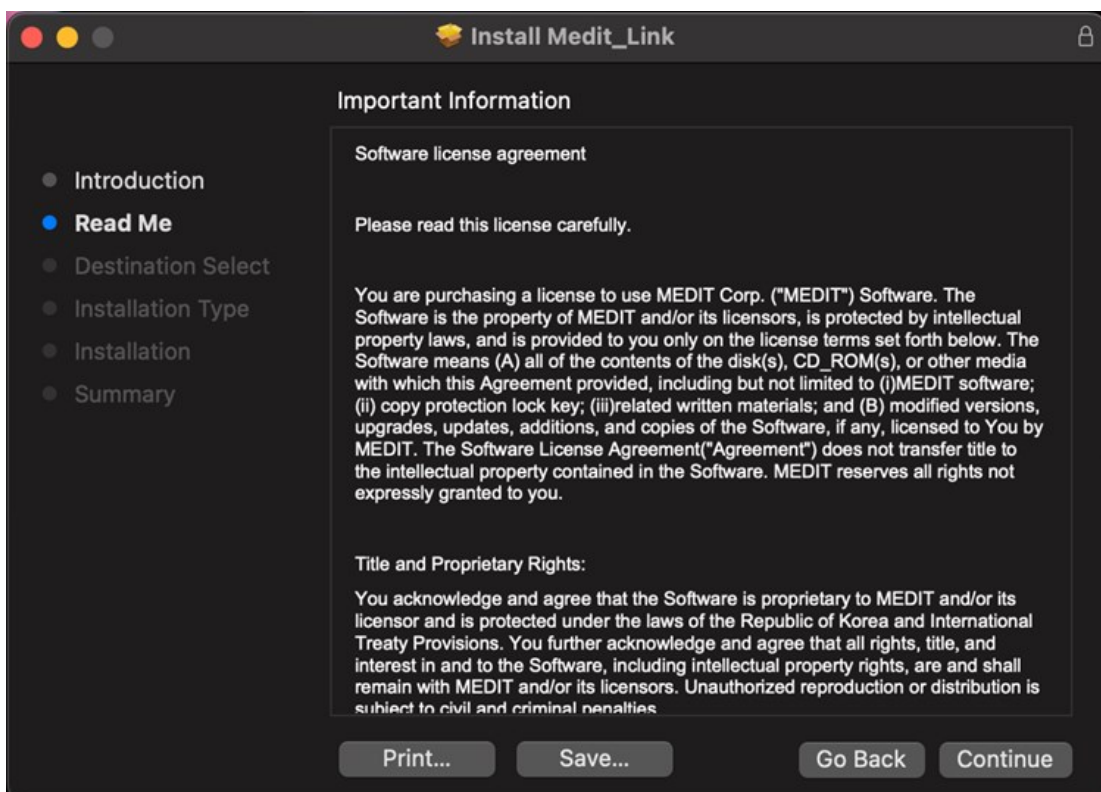

3. Vyberte disk, který chcete nainstalovat a klikněte na „Pokračovat“.

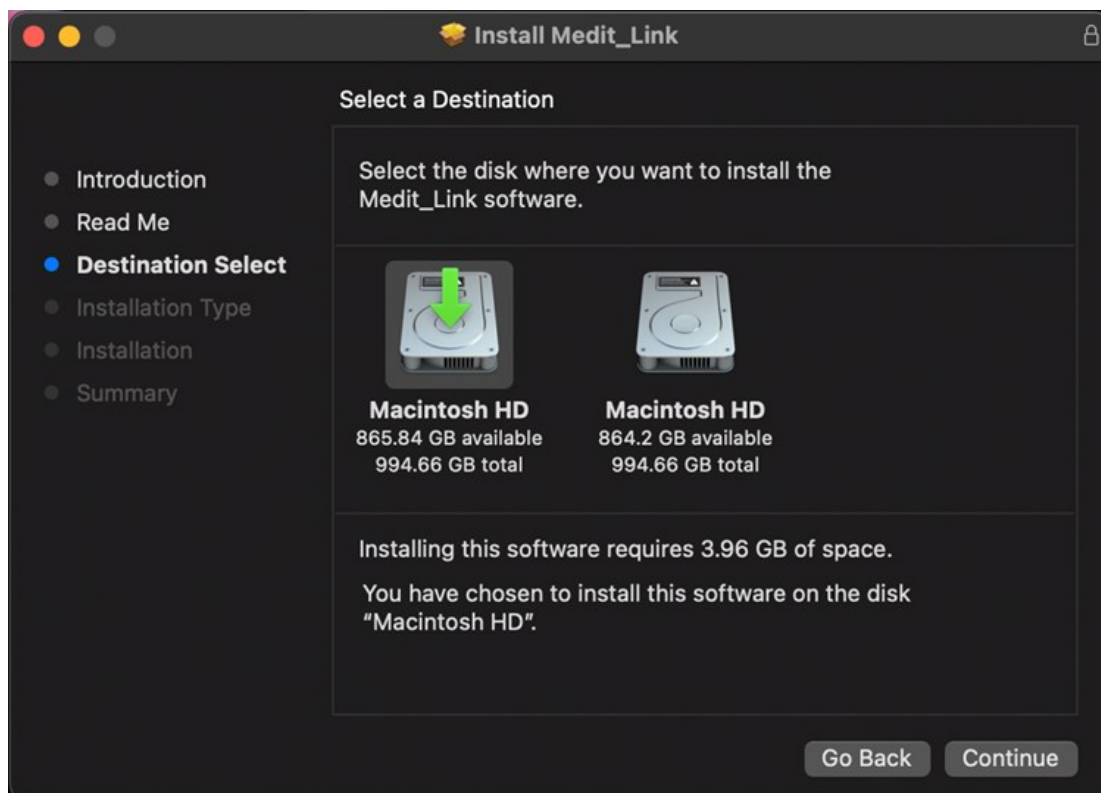


4. Chcete-li změnit lokalitu instalace, klikněte na „Změnit lokalitu instalace...“.

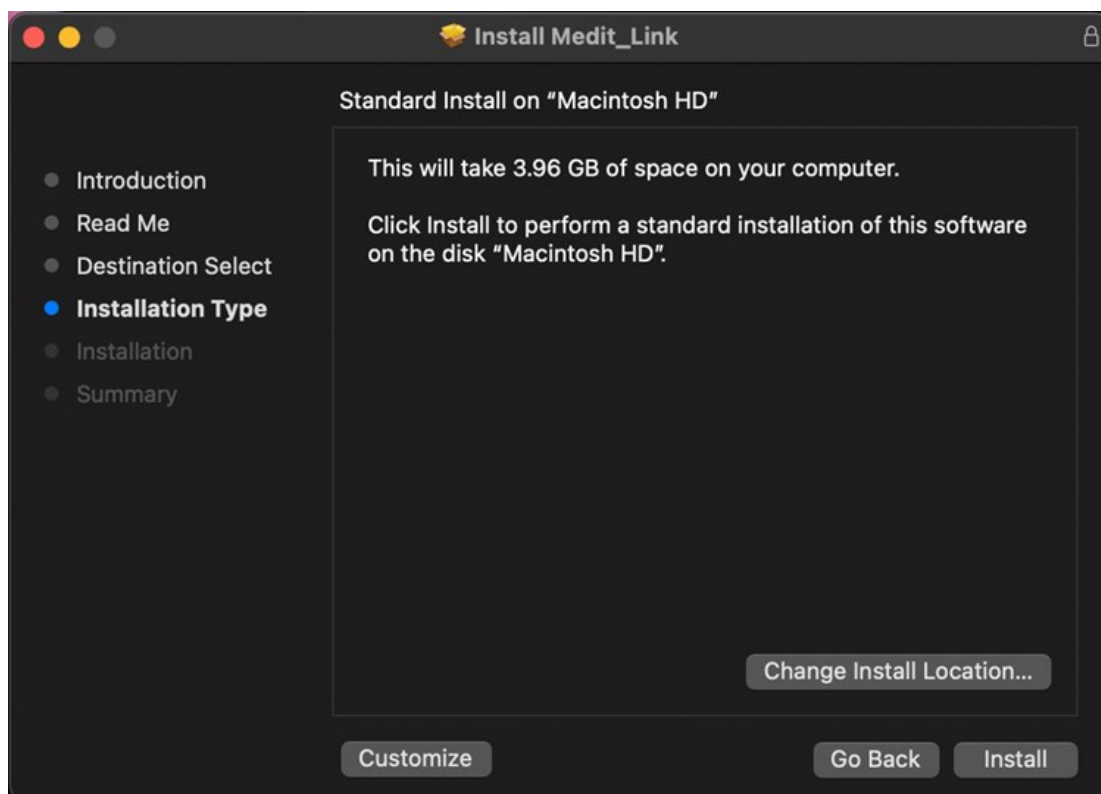


5. Klikněte na „Instalovat“ a zadejte heslo pro Mac pro povolení instalace, pokud o to budete požádáni.



6. Počkejte na dokončení instalace.

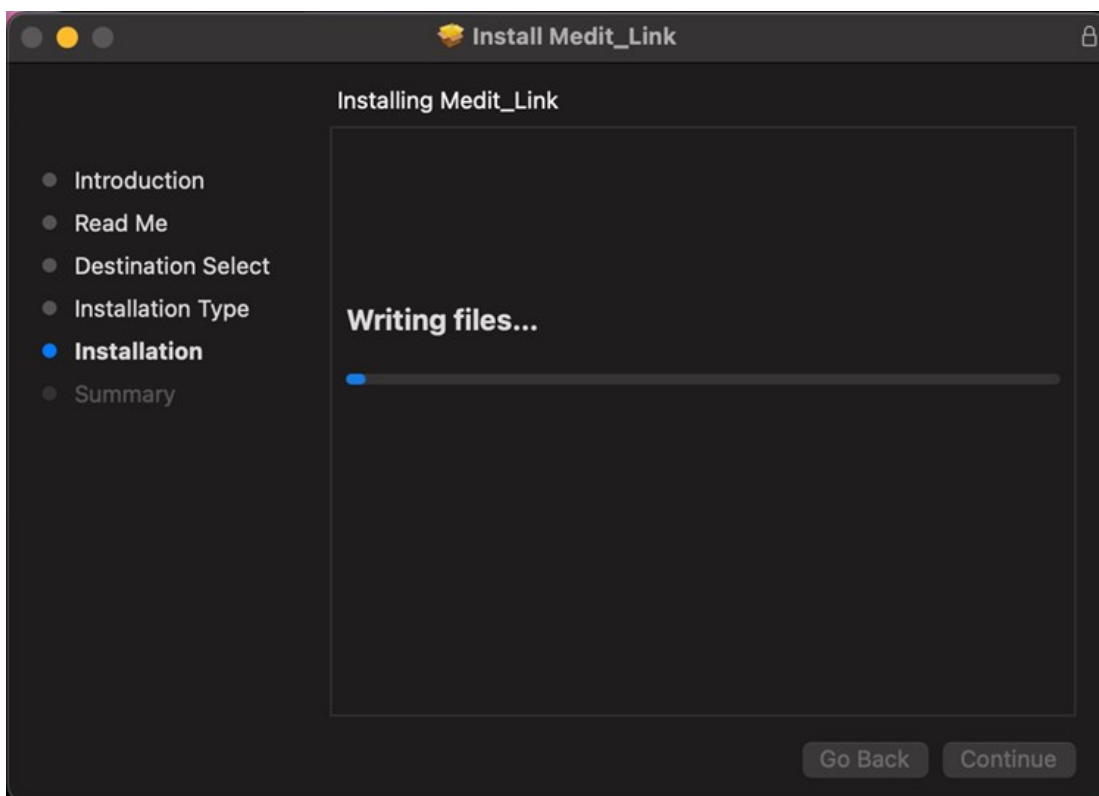


7. Kliknutím na „Zavřít“ okno instalace zavřete.

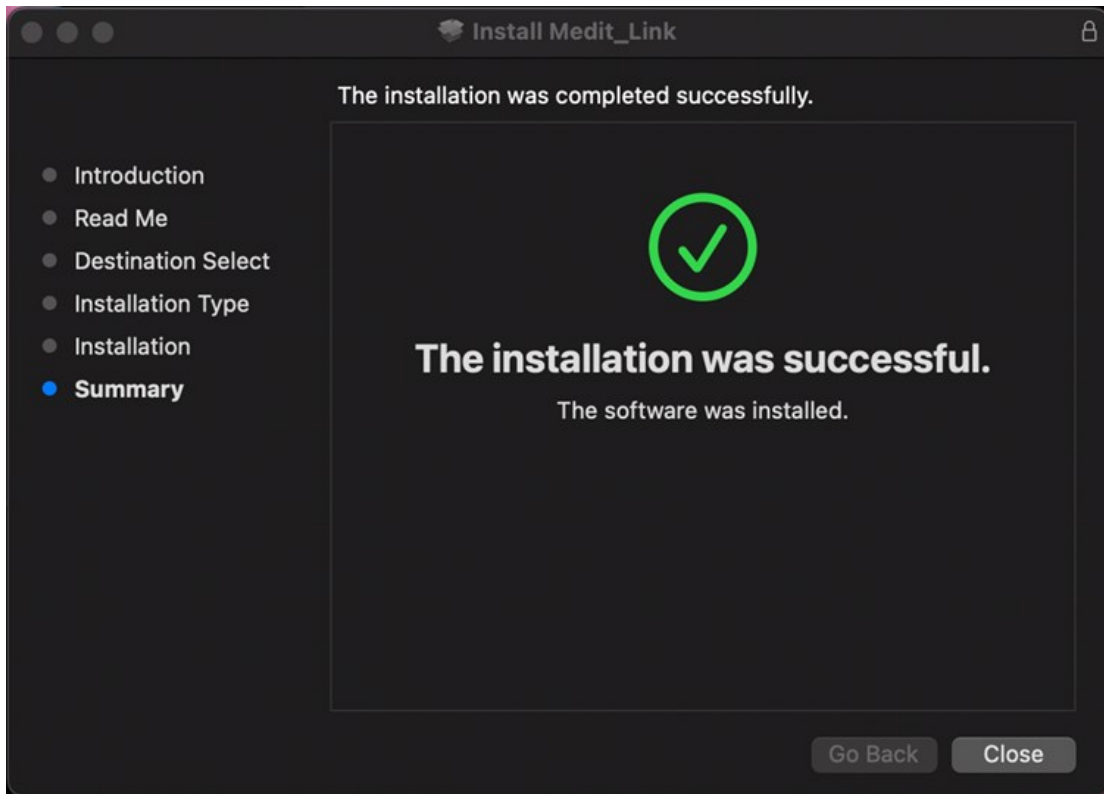

Registrovat se a Přihlásit se

Medit Link Webstránka

Zaregistrujte se ke službě Medit Link na www.meditlink.com.

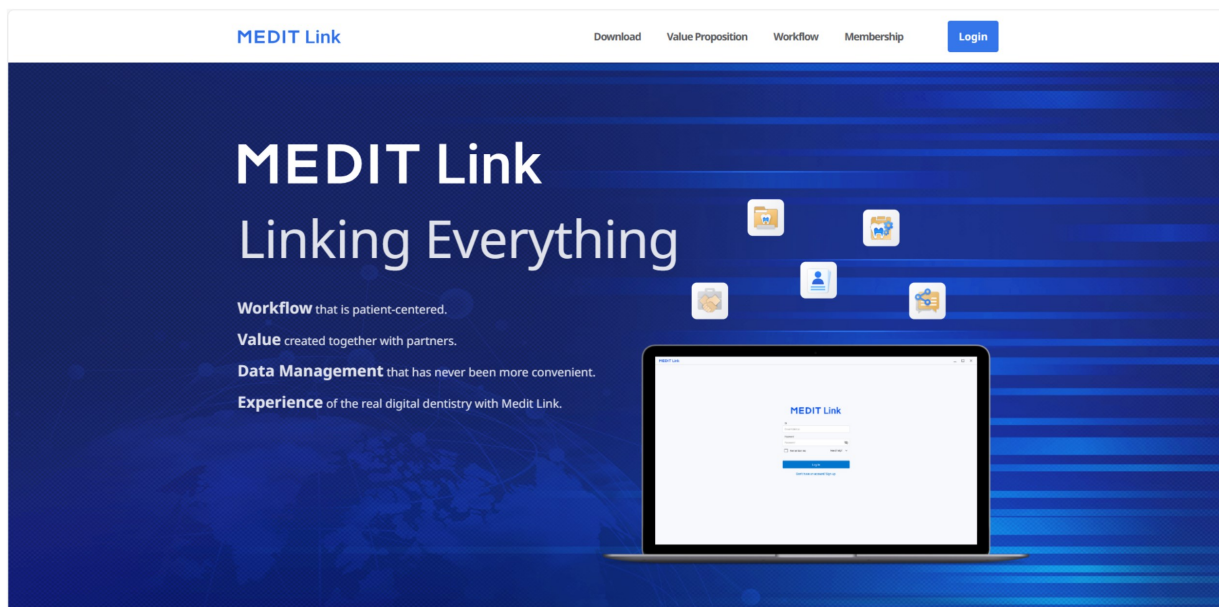

Poznámka

Zaregistrujte se do Medit Link China na www.meditlink.cn.

Registrovat se

Pro použití služby Medit Link si musíte zaregistrovat účet. Po vytvoření účtu jako klinika nebo laboratoř můžete využívat funkce poskytované v Medit Link.

Uživatelé si mohou vybrat jeden z následujících čtyř typů účtu pro registraci členství a službu je tak možné používat s úplnými nebo omezenými funkcemi a oprávněními, v závislosti na typu účtu.

- Klinika - Admin
- Klinika - Člen
- Laboratoř - Admin
- Laboratoř - Člen

Administrátor je obvykle zástupcem vaší organizace a bude mít plný přístup ke všem funkcím a službám Medit Link. Naproti tomu členský účet má omezený přístup.

Chcete-li se zaregistrovat k členství, postupujte takto:

1. Klikněte „Nemáte ještě účet? Zaregistrujte se“ na stránce přihlášení.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Po přečtení poskytnutých popisů klikněte na tlačítko „Registrovat“ u požadovaného typu účtu.



Clinic



Lab

Administrator
Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator
Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member
Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member
Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Zobrazí se následující registrační formulář.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country ▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

View

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Zadejte název kliniky nebo laboratoře a poté v závislosti na požadovaném typu účtu proveďte následující:
 - Pokud se registrujete jako administrátor, klikněte na „Zkontrolovat dostupnost“ a zjistěte, zda je zadané jméno dostupné.
 - Pokud se registrujete jako člen, klikněte na „Hledat.“ Administrátor musí vaši organizaci zaregistrovat dříve, než se zaregistrujete.
5. Vyplňte zbytek registračního formuláře a klikněte na „Registrovat“.

Poznámka

Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových informací během registrace, budete od společnosti Medit dostávat užitečné informace o produktech a službách.

6. Bude vám zaslán ověřovací e-mail.
7. Chcete-li dokončit proces registrace, ověřte vaši e-mailovou adresu pomocí obdrženého odkazu.

Přihlašovací a uvítací stránka

1. Na přihlašovací stránce zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlásit se“.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Pokud jste nevyplnili informace o společnosti, zobrazí se následující dialogové okno.

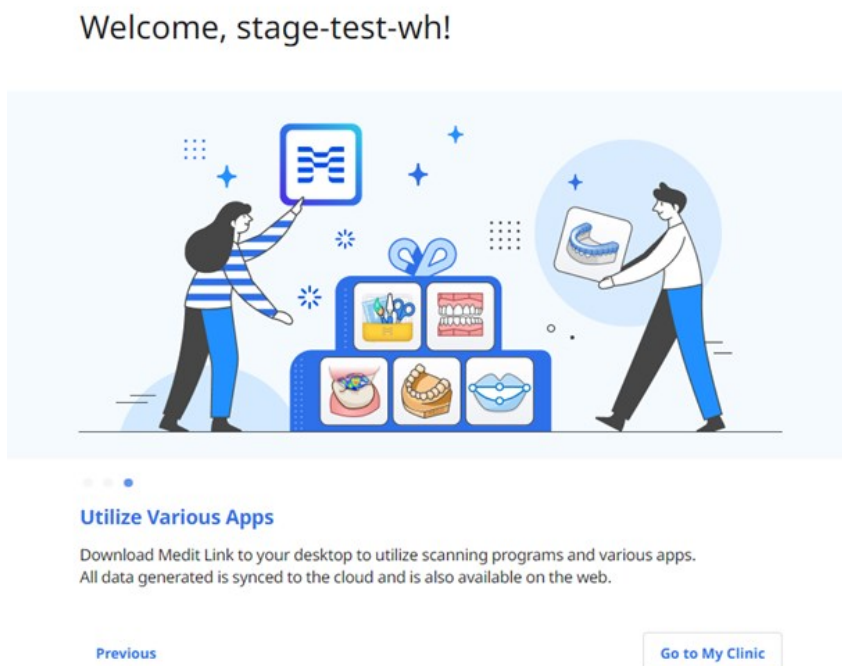

Poznámka


Chcete-li používat služby Medit Link, je třeba zadat informace o vaší klinice nebo laboratoři využitím účtu administrátora.

3. Klikněte na tlačítko „Přejít do Moje klinika“ nebo „Přejít do Moje laboratoř“ a zadejte informace o klinice nebo laboratoři, včetně obchodního názvu, obrázků/loga, nabízených služeb, adresy kanceláře, čísla do kanceláře, atd.
4. Informace zadané na uvítací stránce lze kdykoli upravit na kartě My Info > Moje klinika nebo Moje laboratoř přímo na webstránce Medit Link.

Dashboard

Náhled Dashboardu

Statistiky veškeré odvedené práce na Medit Link si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách - jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

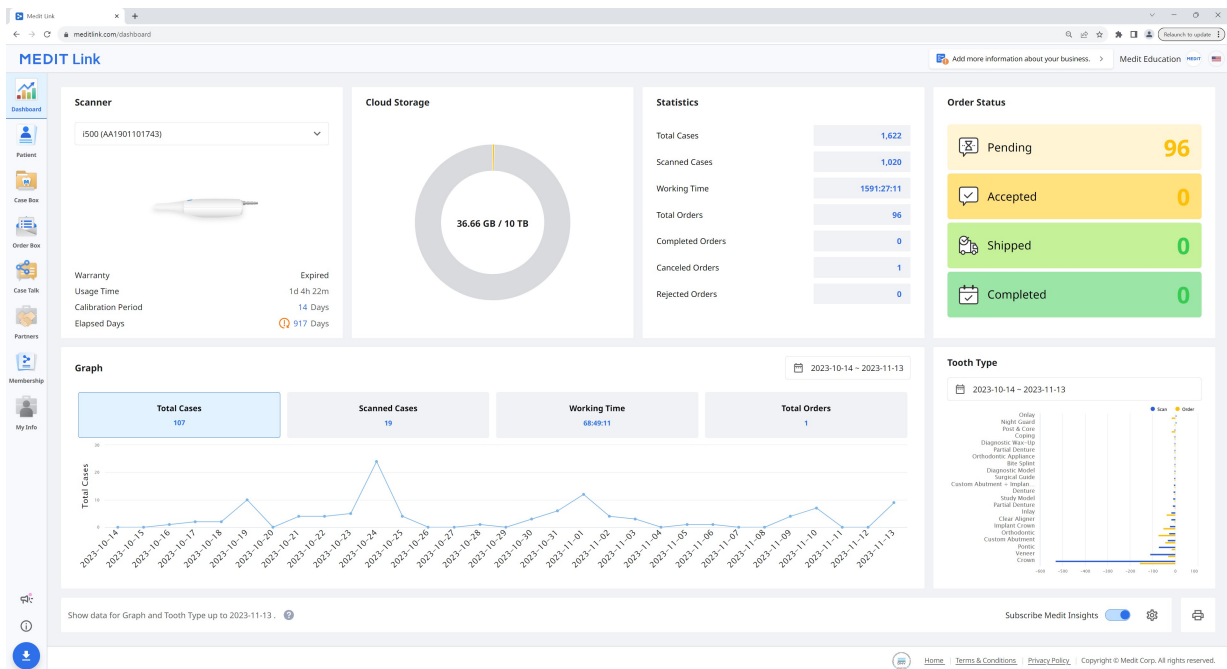

Grafy a tabulky na panelu Dashboard zobrazují statistiky pro celou práci, odvedenou v Medit Link.

Skener	Získáte informace o aktivních skenerech, včetně záruky, doby používání skeneru, intervalu kalibrace a uplynulé doby kalibrace.
Cloud úložiště	Zobrazí celkovou kapacitu cloudu a využívané procento.
Celková statistika	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu úlohy.
Stav objednávky	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu objednávky.
Graf	Graf informací o práci podle období.
Typ zubu	Poskytne statistiky počtu skenů a objednávek podle zadaných informací o léčbě.


Medit Insights

Medit Insights je služba reportingu, která vám pomáhá analyzovat statistiky používání.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Medit Insights

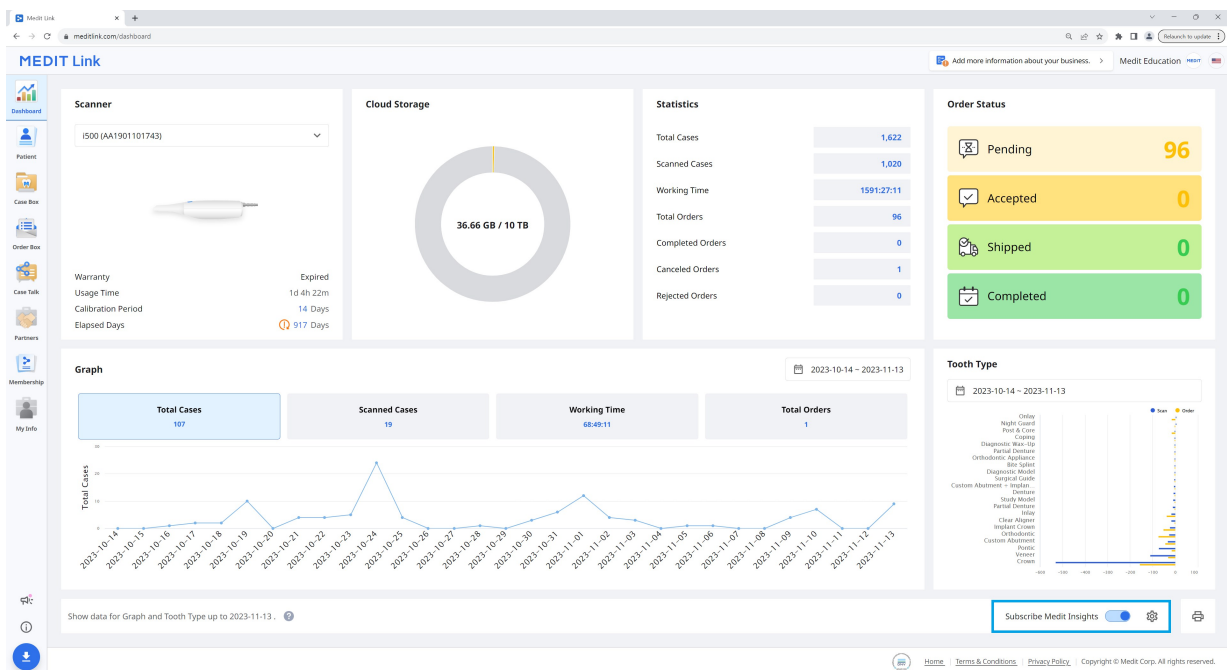

Přihlásit se na odběr Medit Insights

Každý druhý den v měsíci můžete obdržet e-mail s přehledem. Není vyžadován žádný další proces registrace. Stačí povolit „Přihlásit se k odběru Medit Insights“.

Pokud nepoužíváte e-mailovou adresu, kterou jste použili pro účet Medit Link, můžete si pro příjem Medit Insights nastavit jinou e-mailovou adresu.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Druhého dne každého měsíce obdržíte e-mail se statistikami, jak je uvedeno níže.

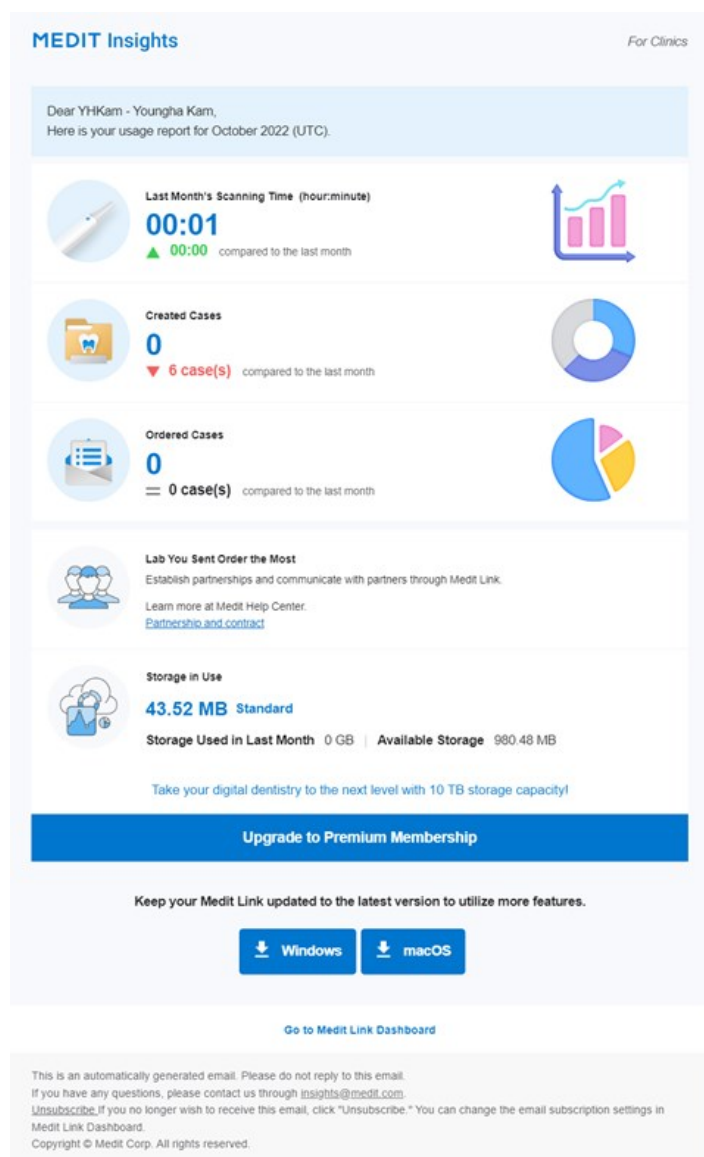

Banner	Medit zde poskytuje užitečné tipy a informace. * Pokud nechcete, aby se banner zobrazoval, zrušte zaškrtnutí políčka Marketingová a propagační smlouva v části Moje info > Můj účet.
Statistické informace	Zobrazí se statistické informace, jako je doba skenování, vytvořené případy, nejvíce objednávaná laboratoř, atd.
Stažení MEDIT Link	Tlačítko poskytuje odkaz ke stažení MEDIT Link.
Dashboard	Všechny statistické informace jsou založeny na informacích z vašeho Dashboardu. Další detaily můžete vidět v Dashboardu.


Odhlásit se z odběru MEDIT Insights

Deaktivujte „Přihlásit se k odběru MEDIT Insights“ na Dashboardu nebo klikněte na „Odhlásit se z odběru“ v přijatém e-mailu.

Patient

Případy můžete spravovat na základě jména pacienta a ID pacienta.


Všichni pacienti registrovaní prostřednictvím aplikace Medit Link se zobrazují v seznamu, což usnadňuje správu pacientů a jejich případů.

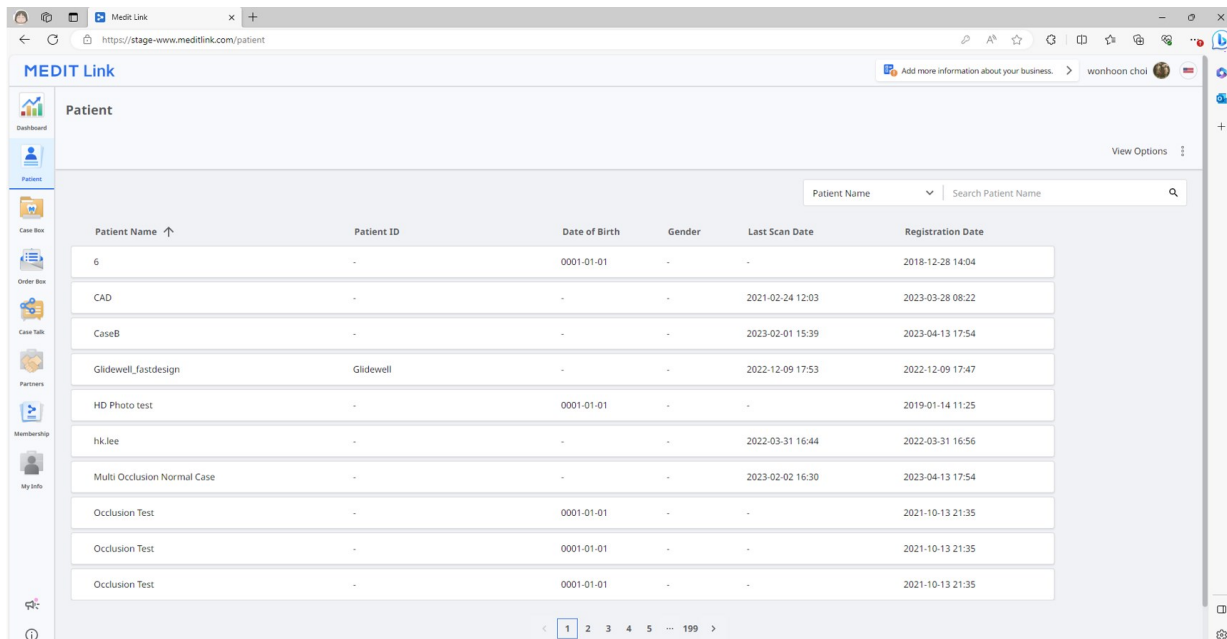

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
GlideWell_fastdesign	GlideWell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Vyhledat podle pacienta


1. Z rozevíracího menu v pravé horní části seznamu pacientů vyberte kritéria vyhledávání mezi Jméno pacienta nebo ID pacienta.

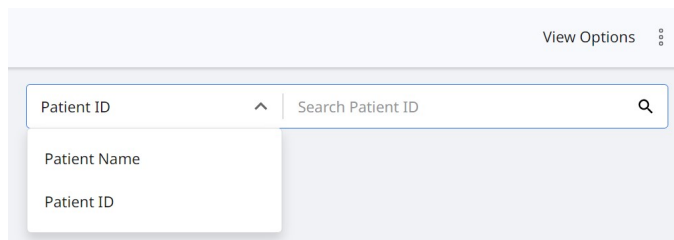

2. Zadejte jméno pacienta nebo ID pacienta pro vyhledávání podle zvolených vyhledávacích kritérií.
3. V seznamu jsou zobrazeni pouze pacienti se zadaným jménem nebo ID pacienta.

Case Box/Work Box


Case Box (Klinika) nebo Work Box (Laboratoř) zobrazuje všechny případy, které uživatel vytvořil v aplikaci Medit Link. Je možné prohlížet soubory využitím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu.

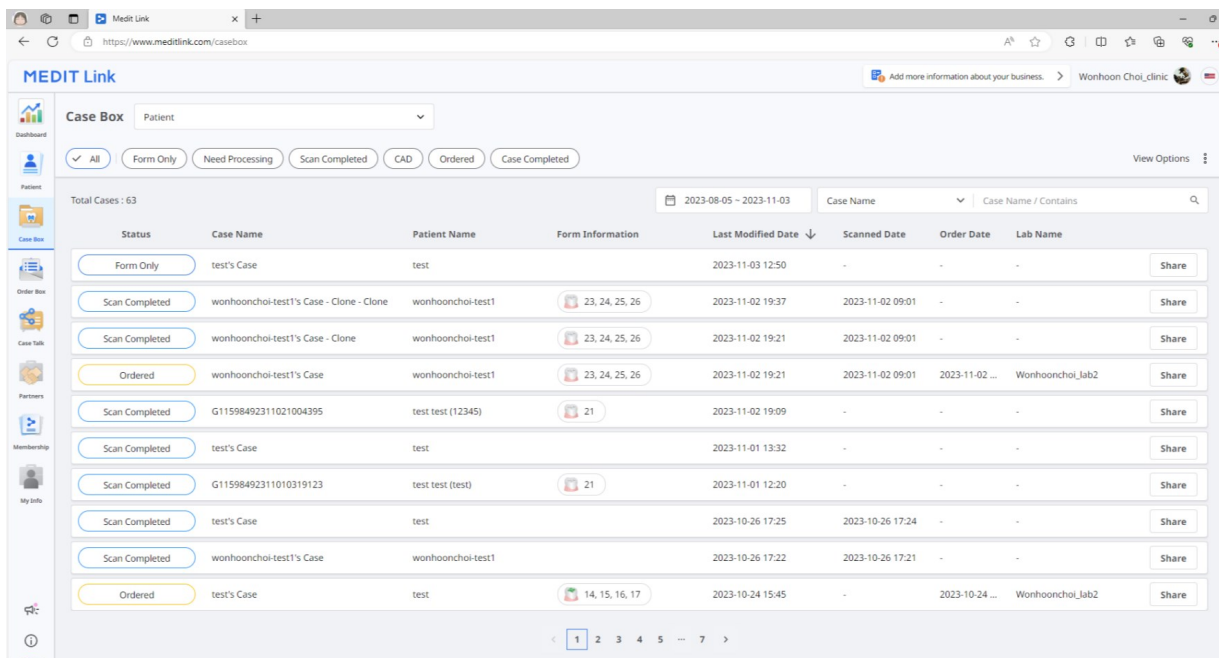


Filtrování případu

Filtrovat podle pacienta

Případy můžete filtrovat podle pacientů. Je to užitečné, když hledáte případy pro konkrétní pacienty.

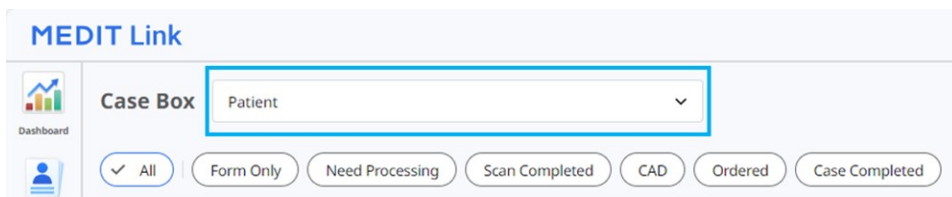

1. Do vyhledávacího pole zadejte jméno pacienta.

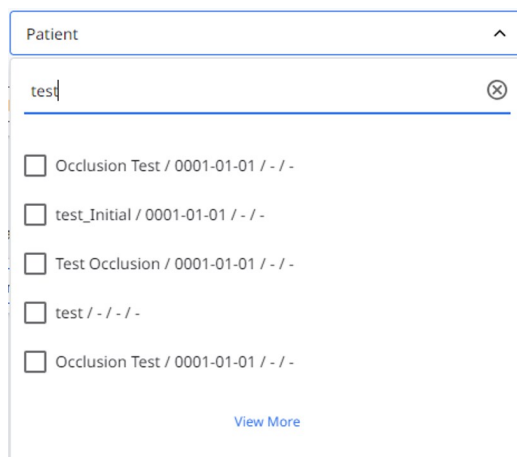

2. Vyberte pacienta ze seznamu výsledků vyhledávání.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. V seznamu se zobrazují pouze případy pro vybrané pacienty, což usnadňuje identifikaci případů, se kterými chcete pracovat.

MEDIT Link

Add more information about your business.
Woonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

Total Cases: 63
2023-08-05 ~ 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

Filtrovat podle stavu

Případy můžete filtrovat na základě jejich stavu.

All
☒ Form Only
Need Processing
☒ Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

- Uživatel může kliknout na stav, který chce zobrazit. Prohlížeč zobrazí pouze případy se zvoleným stavem.
- Uživatel může vybrat také více stavů najednou.

Na základě typu účtu je poskytován následující typ stavu:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratoř)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrovat podle trvání

Můžete filtrovat a zobrazovat případy, které byly naposledy změněny během vámi nastaveného období.

1. Klikněte na filtr doby.

2. Zvolte rozsah.

- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené se včerejším datem.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 7 dní, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 30 dní, kromě dneška.
- Posledních 90 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 90 dní, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy z tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.


Filtrovat podle vyhledávání

Můžete využít možnosti vyhledávání pro snadné a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Možnosti vyhledávání na základě účtu kliniky/laboratoře:

Case Box (Klinika)	Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře
Work Box (Laboratoř)	Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky

Detaily případu

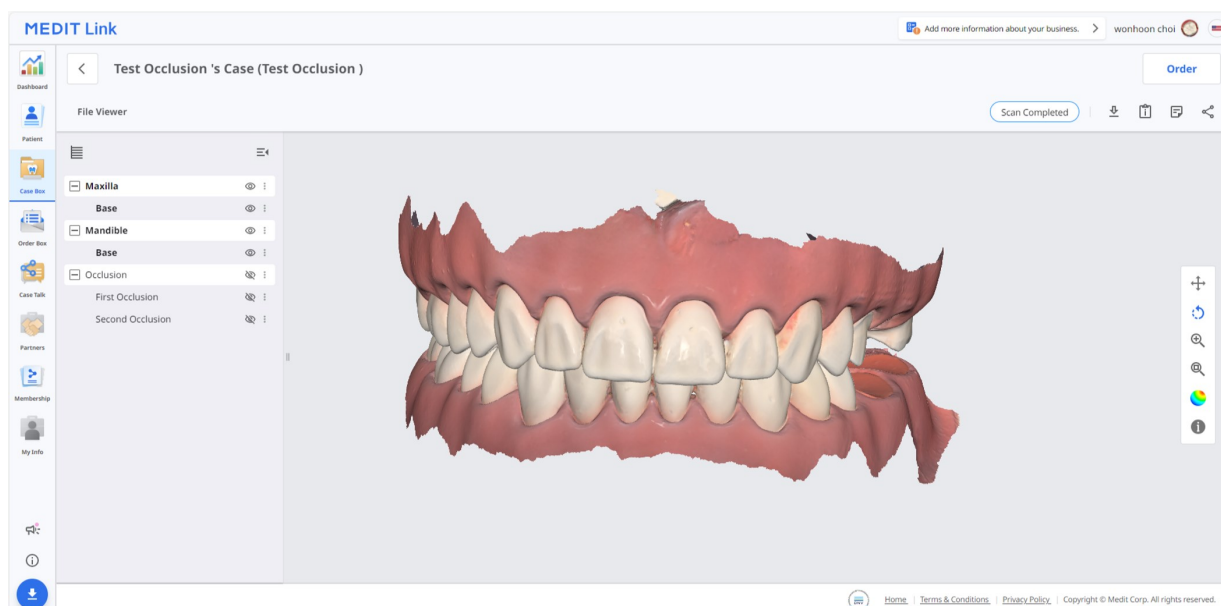

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující nástroje pro správu případů.

	Stav případu	Zobrazit stav případu.
	Přejít do Case Box/Order Box	Poskytně zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Stáhnout	Stáhněte si soubory v případě do místního PC.
	Info o případě	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky a značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případě svým partnerům.
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů.

Order Box/In Box

Order Box (Klinika) nebo In Box (Laboratoř) zobrazuje objednané případy v aplikaci Medit Link.

Detaily objednávky

The screenshot shows the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' page in the Medit Link application. The page is divided into a left sidebar with navigation icons and a main content area. The main area has a top header with the case name and a 'Cancel Order' button. Below this is a 'Order' tab with a 'File Viewer' sub-tab. The 'Order' tab contains a form with fields for Order ID, Patient Name, Occlusion Test, Scanned Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The 'File Viewer' sub-tab shows an 'Order List' table with columns for No., Type, Method, Material, and Shade. The table lists four items, all of type 'Inlay' and material 'Multi-Layered Zl...'. The status of the order is 'Pending'.

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazí název případu a jméno pacienta. |
| 2 | Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení). |
| 3 | Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů |
| 4 | Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případě, připomínky & značky, atd. |
| 5 | Zobrazit podrobné informace o objednávce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky. |
| 6 | Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení. |


Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace objednávky, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínky a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, které určíte, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím „Case Talk“ v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

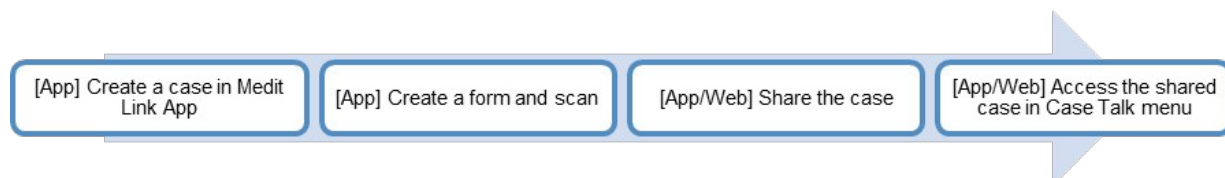


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.

Vytvoření Case Talk

Sdílený odkaz můžete vytvořit k případu, vytvořenému v Case Box/Work Box.

1. Najděte případ, který chcete sdílet a klikněte na tlačítko „Sdílet“ vpravo.

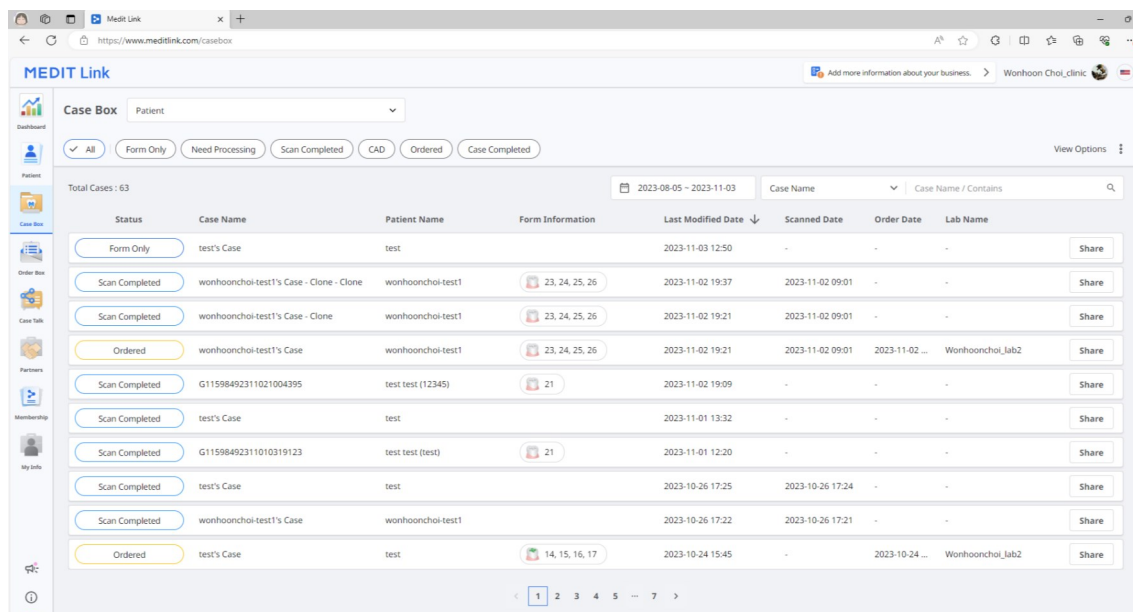


2. Vyberte soubory, které chcete sdílet.

Sdílet s	• Sdílet s kýmkoli Vytvoří sdílený odkaz. Soubory můžete sdílet s kýmkoli. • Sdílet s konkrétními lidmi Vytvoří a odešle sdílený odkaz konkrétním lidem.
Sdílet prostřednictvím	Pokud vyberete „Sdílet s konkrétními lidmi“, odkaz můžete sdílet s konkrétními lidmi různými způsoby. • E-mailová adresa • SMS • Partneři
Datum expirace	Nastavte datum expirace odkazu. Po vypršení platnosti odkazu už k němu lidé, se kterými jste odkaz sdíleli, nebudou mít přístup k souboru. Období expirace můžete od dnešního dne prodloužit až o 90 dní.
PIN kód	Nastavte 6-místný přístupový kód pro zajištění bezpečnosti dat.
Sdílet jméno pacienta	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni lidé připojeni k odkazu, uvidí jméno pacienta.
Udělit povolení ke stažení	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni uživatelé se sdíleným odkazem mohou stahovat soubory.
Povolit komentáře	• Pokud zaškrtnete tuto možnost, budete moci komunikovat prostřednictvím sdíleného odkazu. • Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, příjemce bude moci pouze zobrazit vaše komentáře, ale nebude moci přidávat své vlastní.
Komentář	Můžete zanechat zprávu v sekci komentáře.

Detaily Case Talk

Soubory můžete vidět ve sdíleném případě. Na stránce detaily Case Talk jsou k dispozici následující funkce.

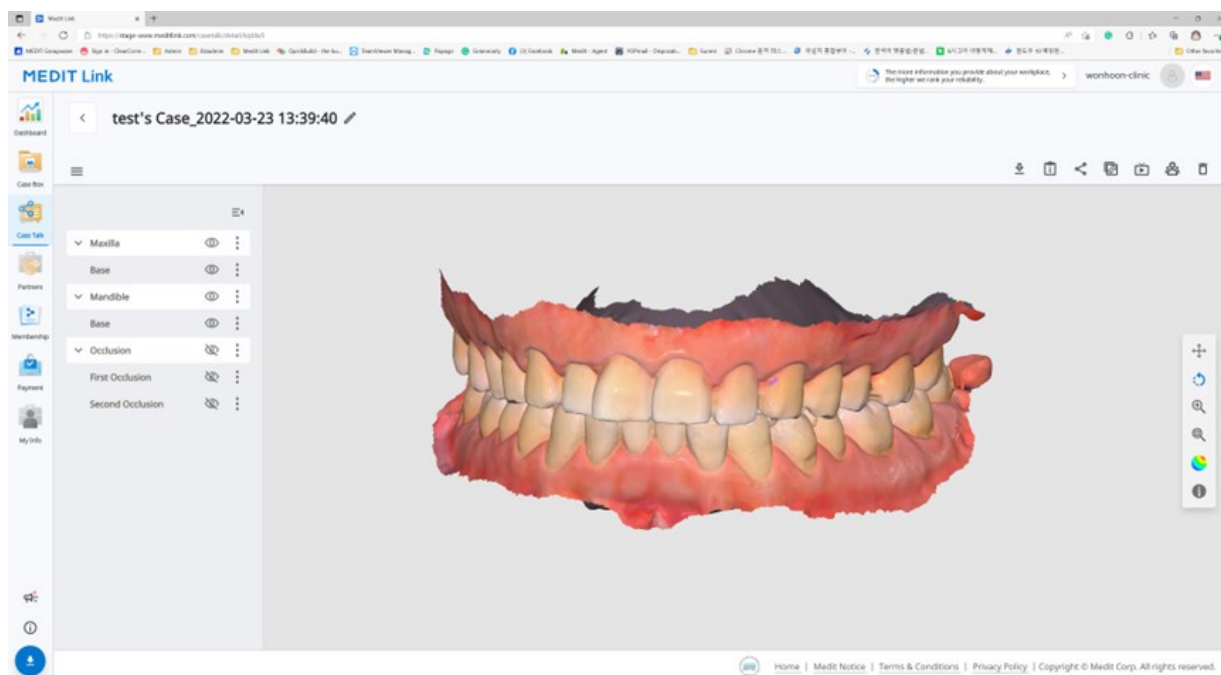

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do místního počítače.
---	----------	--

	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	Kopírovat odkaz	Zkopíruje sdílený odkaz do schránky. Zkopírovaný odkaz zobrazí sdílené soubory ve vašem webovém prohlížeči.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, přistupující ke sdílenému odkazu.
	Odstranit	Odstranit sdílený odkaz. Smazaný sdílený odkaz již není přístupný.

Poznámka


Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Web Viewer

Sdílená data můžete zobrazit ve webovém prohlížeči přes Case Talk.

S osobami, které mají přístup k odkazu, je možné komunikovat využitím anotací a komentářů.

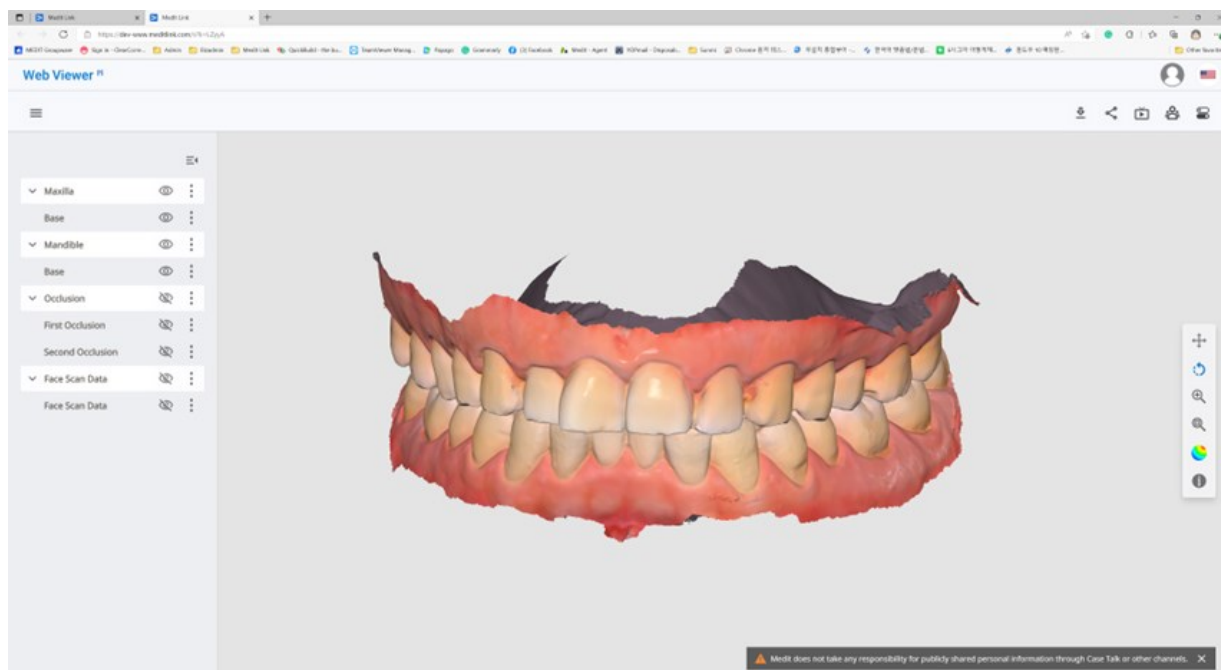

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.

	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, připojené ke sdílenému odkazu.
	Značení zubu	Změňte systém značení zubů.


Poznámka

Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Anotace

Do určené lokality na 3D modelu můžete přidat anotace. Kdokoli s odkazem může zobrazit anotace, které přidáte.

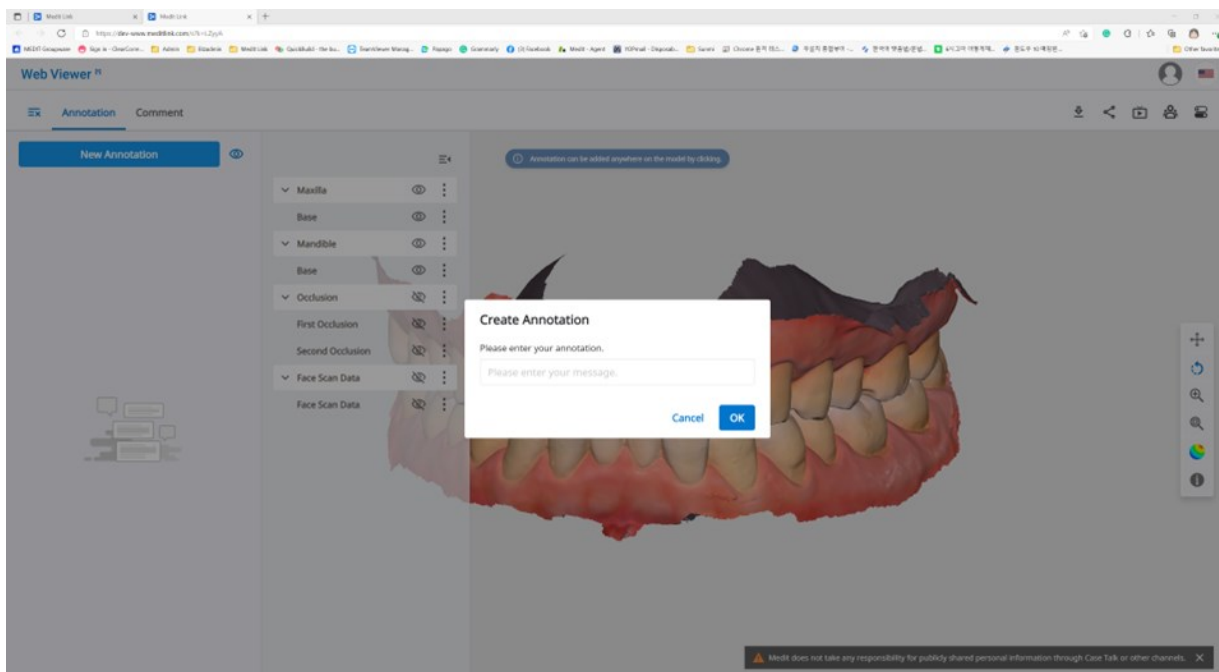


Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Anotace

1. Najděte ikonu menu v levém horním rohu a vyberte záložku „Anotace“. Pomocí tlačítka „Nová anotace“ můžete kliknutím přidat kamkoli k datům anotaci.
2. Napište zprávu a kliknutím na „OK“ ji uložte.

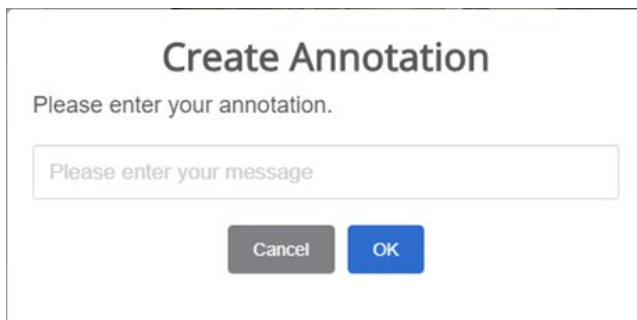


Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

3. Anotace můžete použít jako jednoduchý komunikační kanál. Kliknutím na vytvořenou anotaci zadejte odpověď a stiskněte „Poslat“.

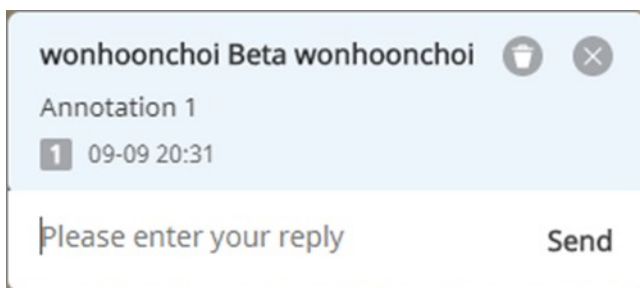

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply Send

Komentáře

S uživateli, kteří mají přístup k odkazu, můžete komunikovat prostřednictvím záložky „Komentář“ v menu Web Viewer.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Komentář

Sdílení obrazovky v reálném čase

Svou obrazovku můžete sdílet v reálném čase.

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Live

1. Klikněte na „Live“ pro sdílení obrazovky Web Viewer s připojenými uživateli.



Web Viewer Live

Web Viewer Live allows you to share the screen in real-time with all the users currently connected. Try Web Viewer Live now.

Cancel OK



2. Kliknutím na „OK“ zahájíte sdílení obrazovky.
3. Ostatní osoby, které použili odkaz, musí přijmout sdílení obrazovky.
4. Obrazovka uživatele, který zahájil sdílení obrazovky, se zobrazí synchronizovaně s

obrazovkou osoby, která obdržela požadavek.



Datový strom

Všechna data jsou seskupena a zobrazena podle atributů v datovém stromu. Můžete zobrazit nebo skrýt data, upravit opacitu a tak dále.

Ovládání datového stromu

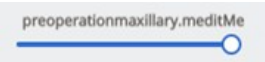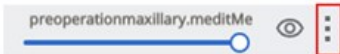Zobrazit / Skrýt	Kliknutím na ikonu „oko“ zobrazíte nebo skryjete data v náhledu. Ovládejte viditelnost dat jako skupinový nebo samostatný soubor.
Opacita	Umístěním ukazatele myši na viditelný prvek zobrazíte posuvník opacity. Upravte posuvník a změňte průhlednost dat. 
Rozšířené menu	Rozšířené menu se nachází na pravé straně každého elementu Datového stromu. Zahrnuje následující možnosti:  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data kromě aktuálních dat. • Skrýt: Skryje aktuální data.

3D ovládání modelu

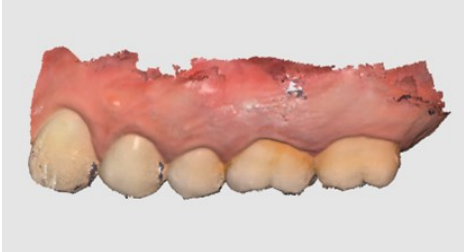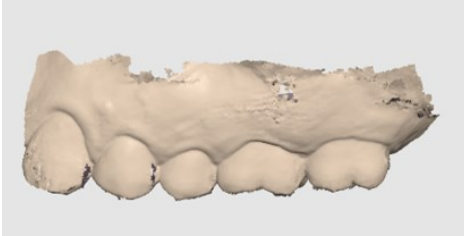	Panorámovát	Posunout model.
	Otočit	Otočit model.
	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicuje do středu obrazovky.
	Režim Zobrazení modelu	Zobrazte data ve skutečných barvách textury. 
	Vypnout texturu	Zobrazí data v jedné barvě. 

Partners

Můžete vyhledávat potenciální partnery a požádat o partnerství a zobrazit seznam současných partnerů.


Poznámka

Služby využívající Google Maps nejsou dostupné na Medit Link China.

Vyhledávání Partnerů


Můžete vyhledávat uživatele Medit Link na základě jejich obchodního názvu a/nebo adresy.

Ve výsledcích vyhledávání můžete odeslat žádost o partnerství podniku, se kterým byste chtěli spolupracovat.

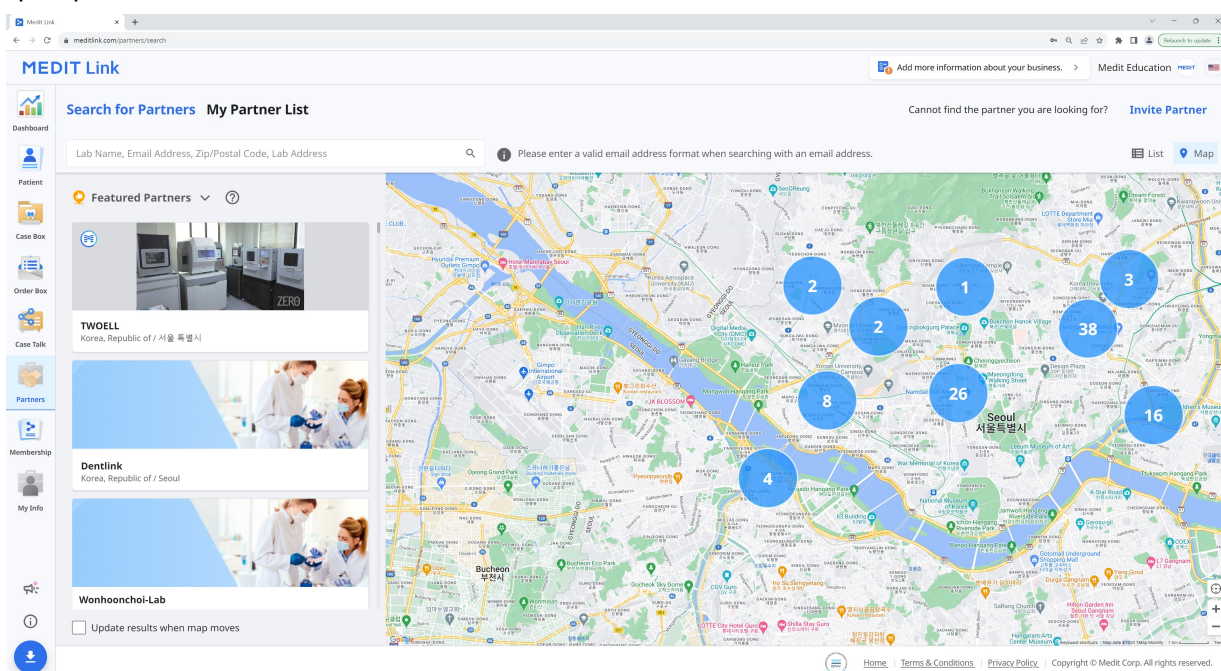

Můj seznam partnerů

Vaše současná partnerství se všemi stávajícími partnerskými firmami si můžete prohlédnout v seznamu Můj seznam partnerů.

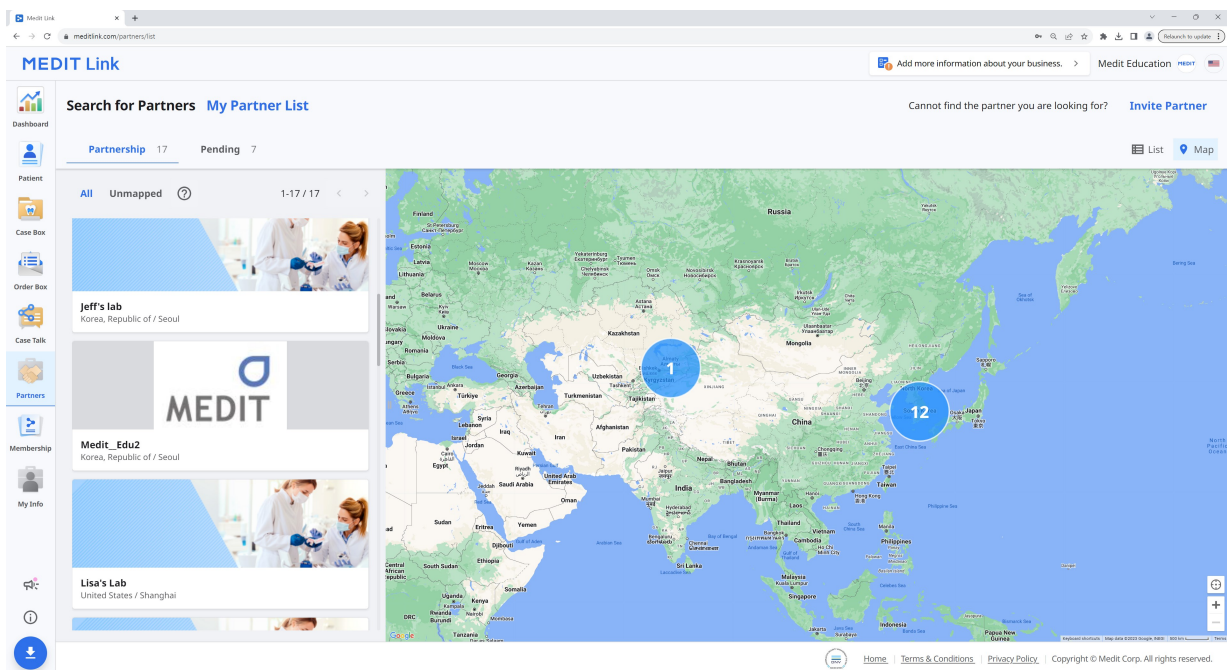

Pozvání partnera

Pokud máte kliniku nebo laboratoř, se kterými chcete spolupracovat, můžete je pozvat, aby se přidali k Medit Link. Partnerství bude automaticky vytvořeno, jakmile přijmou pozvání.

1. Klikněte na „Pozvat partnera“ v levé horní části obrazovky.
2. Zadejte e-mailovou adresu podniku, se kterým chcete spolupracovat a pošlete mu pozvánku se žádostí o partnerství.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Jakmile pozvaná organizace přijme pozvání a zaregistruje se do Medit Link, partnerství bude automaticky navázáno.

Membership

Členská politika Medit Link má za cíl vytvořit rozsáhlejší digitální prostředí, které se postupně rozšíří o poskytování různých služeb založených na cloudové platformě.

Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům konzistentnější a personalizovanější zkušenost s naší novou politikou, týkající se členství.

K dispozici jsou dva členské plány:

Standardní

- Standardní plán zdarma pro všechny přihlášené uživatele
- 1 GB cloud úložiště
- Pro nové uživatele

Premium

- Placený plán
- 10 TB cloud úložiště
- Pro uživatele s mnoha případy a různými daty
- Měsíční bezplatná zkušební verze


	Standardní	Premium
Cloud úložiště	1 GB	10 TB
Měsíční poplatek	Zdarma	\$0.99/měsíc

* Cloud Storage nepočítá prostor zabraný surovými daty.

Poznámka

Plány členství budou k dispozici také na Medit Link China. Plán Premium můžete získat zdarma až do oficiálního vydání funkce.

Členství

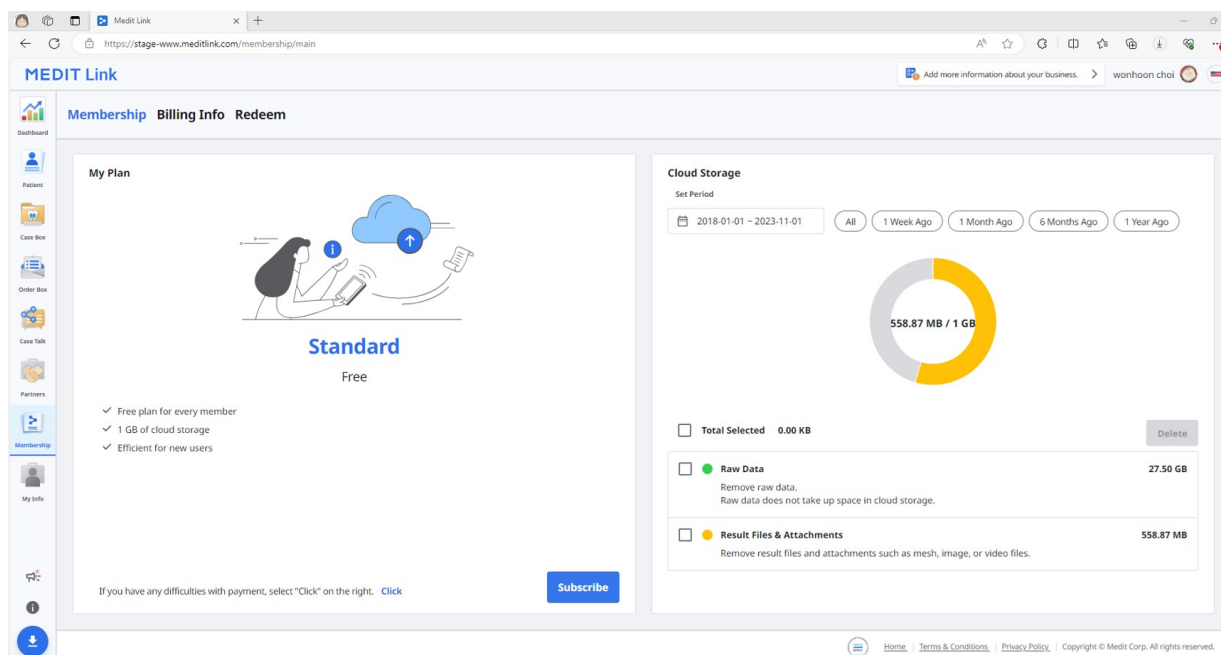

Můj plán

V levé části můžete vidět váš aktuální plán členství. Můžete také kdykoli změnit stav členství.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Subscribe

Cloud úložiště

V pravé části můžete spravovat své cloudové úložiště.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago



☐ Total Selected 0.00 KB **Delete**

☐ **Raw Data** 147.52 GB

Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 13.74 GB

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.


Nastavit období	Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci. • Vše: Zobrazit všechny soubory. • Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření. • Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření. • Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření. • Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.
Surová data	Surová data nezabírají prostor v cloud úložišti, takže nebudou v pi-grafu. V případě potřeby také z této lokality můžete spravovat surová data, například je smazat, čímž chráníte soukromé informace pacienta.
Výsledky & Přílohy	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudu. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo.

Přihlásit se k odběru

Pokud aktuálně používáte plán Standard nebo plán Premium s kódem pro uplatnění, můžete si předplatit členství Premium.

Platba se provádí prostřednictvím služby Stripe (www.stripe.com).

1. Klikněte na tlačítko „Přihlásit se k odběru“.

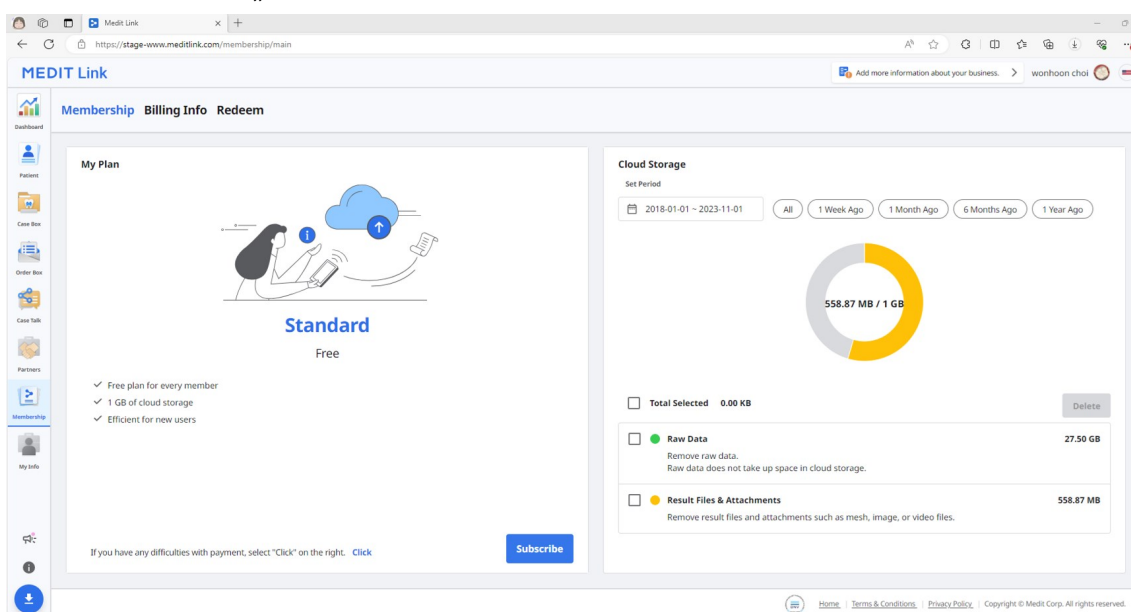

2. Zkontrolujte popis plánu Premium a znovu klikněte na „Přihlášení k odběru“.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. Zkontrolujte cenu a podmínky a zadejte potřebné informace pro platbu. Poté klikněte na „Přihlásit se k odběru“.

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Platba může trvat několik sekund. Po dokončení se zobrazí potvrzovací zpráva.

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close


Odhlásit se z odběru

Z členství se můžete odhlásit kdykoli. Po odhlášení z odběru můžete i nadále využívat po zbývajících dny zaplaceného měsíce členství Premium. Od dalšího dne platného období se plán změní na Standardní a cloud úložiště bude omezeno na 1 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

1. Klikněte na „Odhlásit se z odběru“.

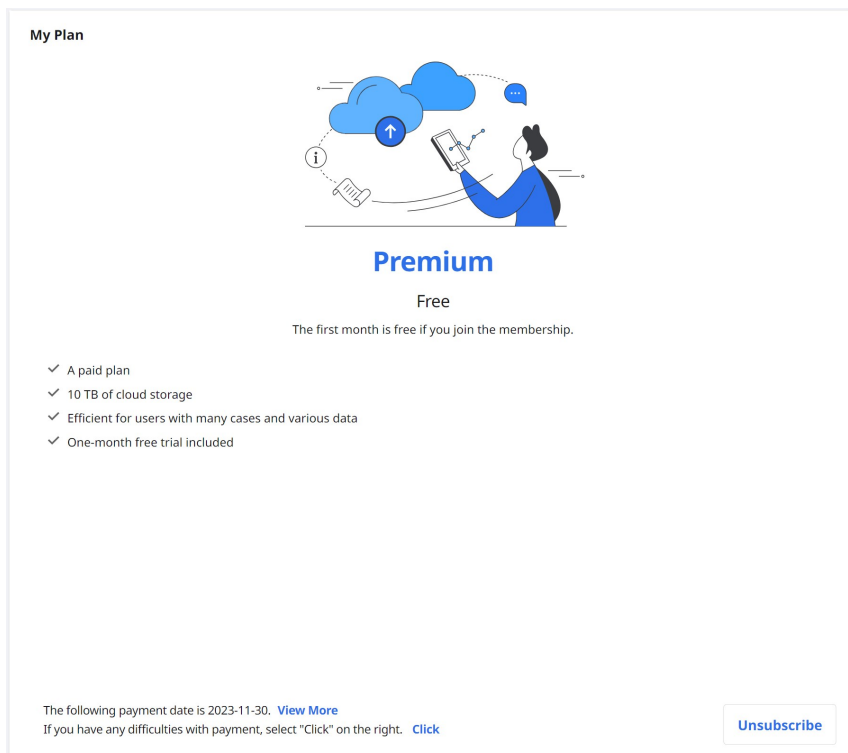

2. Klikněte na „Zrušit předplatné“.

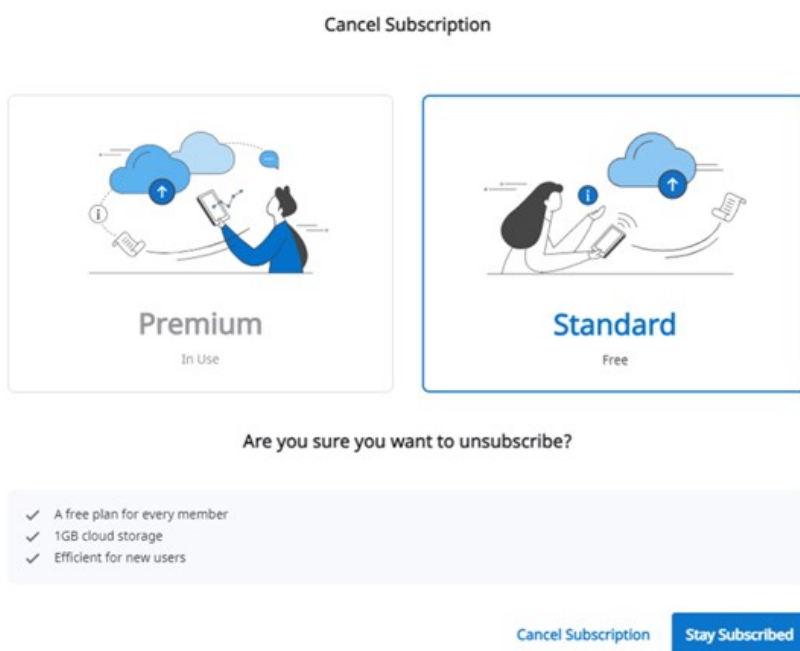

3. Chcete-li potvrdit, že se chcete odhlásit, klikněte znovu na „Zrušit předplatné“ v novém vyskakovacím okně.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Vaše předplatné bylo zrušeno.
5. Od dalšího dne platného období se plán změní na Standardní a cloud úložiště bude omezeno na 1 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Fakturační údaje

Můžete zkontrolovat historii plateb za členské předplatné, včetně faktury za každou platbu. Můžete také přidat nebo změnit platební metodu, která bude použita od příští naplánované platby.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Jak přidat platební metodu

1. Klikněte na „Upravit platební metodu“.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Klikněte na „Přidat platební metodu“.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Zadejte požadované informace a klikněte na „Přidat“.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Nově přidaná platební metoda bude nastavena jako výchozí a použita od příští platby.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021

VISA **** 4242 Expires 11/2021

+ Add payment method

Jak změnit platební metodu

1. V dialogovém okně fakturace klikněte na ikonu rozbaleného menu vedle způsobu platby,

který chcete změnit.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day


Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Kliknutím na „Nastavit jako výchozí“ nastavíte vybranou kartu jako výchozí platební metodu.

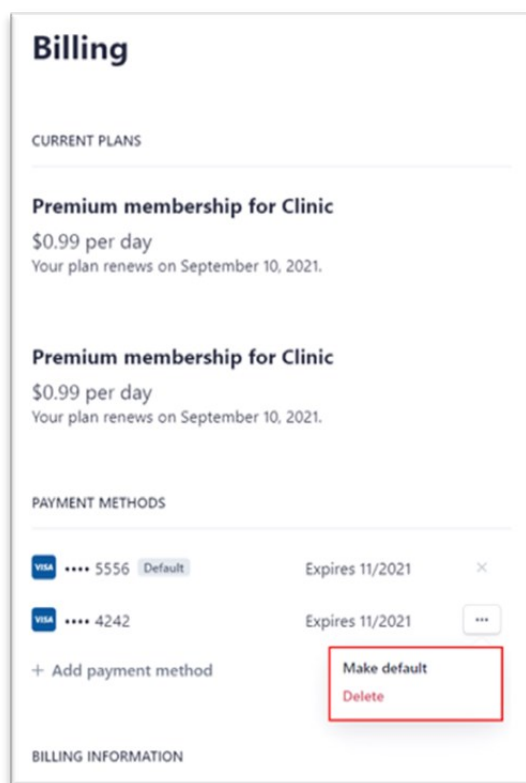


Uplatnění


Zaregistrujte kód kupónu, poskytnutý v rámci akce. Premium členství můžete používat společně s kódem pro uplatnění.

Registrovat kód kupónu

1. Zadejte kód kupónu a klikněte na „Registrovat“.

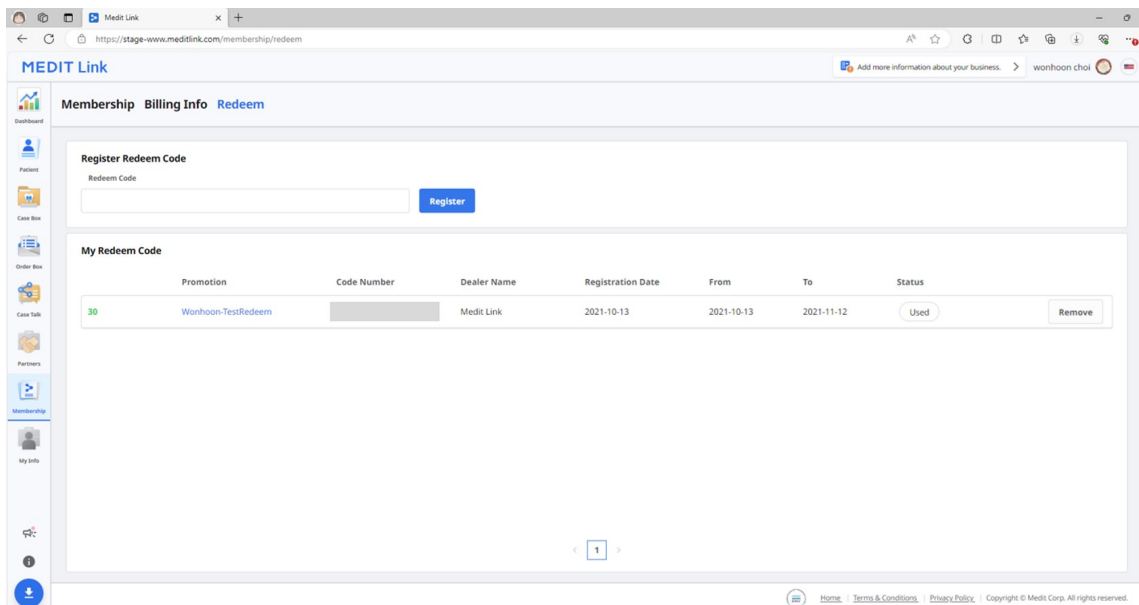

2. Přečtěte si upozornění a ve vyskakovacím dialogovém okně zvolte „Registrovat“ nebo „Použít“.
 - Registrovat: Zaregistrujte kód kupónu. Kód pro uplatnění můžete aktivovat a použít později po registraci.
 - Použít: Zaregistrujte se a aktivujte kód kupónu pro jeho uplatnění. Akční sleva platí okamžitě.

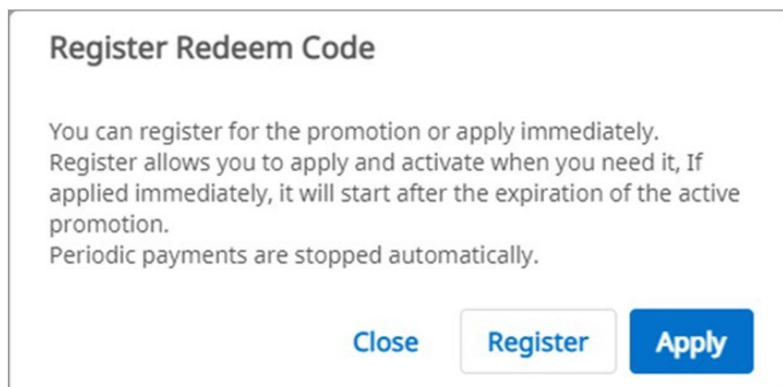

Aktivovat kód kupónu

Můžete zaregistrovat více kódů kupónu, ale musíte aktivovat ten, který chcete použít.

1. Vedle kódu, který chcete použít, klikněte na tlačítko „Aktivovat“.
 - Pokud neexistuje žádný kód se stavem „Activated“, bude okamžitě použit kód vybraný vámi.
 - Pokud již aktivovaný kód existuje, nově zvolený kód se změní na stav „Waiting“. Když vyprší platnost aktuálně aktivovaného kódu pro uplatnění, automaticky se aktivuje nový kód pro uplatnění ve stavu „Waiting“.

Poznámka

Lze aktivovat pouze jeden kód pro uplatnění a pouze jeden může být ve stavu „Waiting“.

My Info

Můj účet

Můžete si prohlédnout a upravit informace, které jste uvedli při registraci a zkontrolovat stav vašeho členství.

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name

wonhoon choi

Language

한국어 (대한민국)

Country

Korea, Republic of

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

Subscribe

Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

1

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

1

Register up to 3 websites.

Můžete zkontrolovat informace o připojeném zařízení pro účet.

49

Jiné Menu

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informace Medit

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Academy, Medit Academy YouTube a Medit Centrum nápovědy.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Stáhnout aplikaci Medit Link

Nejnovější verzi instalačního programu si můžete stáhnout z webu. Toto menu je užitečné, když ztratíte instalační program, poskytovaný v balíčku produktu nebo máte zastaralý instalační program.

 Poznámka

Medit Link se aktualizuje automaticky, když máte připojení k internetu.

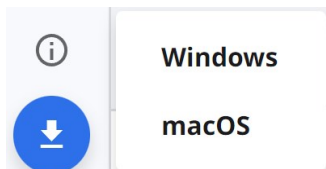

Náhled

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1.Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1.First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1.Alexa				0	2023-10-19	
1.Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1.Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1.Orange				0	2023-10-24	
1.Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Lišta záhlaví	Viz Aplikace Medit Link > Titulní lišta pro více informací.
2	Menu	Viz Aplikace Medit Link > Menu pro více informací.
3	Nástroje a funkce	Viz Aplikace Medit Link > Prohlížeč souborů a Aplikace Medit Link > Možnosti zobrazení pro více informací.
4	Seznam případů	Viz Aplikace Medit Link > Filtrování a Hledat pro více informací.

Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.

Typ účtu		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Účty kliniky	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Člen	O	O	X	X	X	O	O * Pouze funkce obnovení	O
Účty laboratoře	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Člen	X	X	X	X	O	O	O * Pouze funkce obnovení	O

Lišta záhlaví

Záhlaví poskytuje rychlý přístup k funkcím, jako jsou informace o účtu, upozornění, upozornění a aktualizace, nastavení a stav sítě.



Moje informace

Moje info obsahují základní informace o uživateli, jako je profilový obrázek, název kliniky nebo laboratoře, e-mailová adresa a uživatelské jméno.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)[Close](#)

Upozornění

Je možné vidět oznámení o partnerství nebo informace související s účtem.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Zaškrtnutím políčka zobrazíte pouze nepřečtené zprávy. |
| 2 | Kliknutím na jakékoli oznámení se okamžitě přesunete na související případ nebo webovou stránku. |

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Nastavení

Dialog Nastavení umožňuje uživatelům konfigurovat program.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Pro podrobné informace o možnostech nastavení viz [aplikaci Medit Link > Nastavení](#).

Stav sítě

Po připojení k síti vám Medit Link umožňuje bezproblémově využívat všechny funkce.

Ikona stavu sítě se zobrazuje v záhlaví, aby vám pomohla zkontrolovat stav připojení k síti v reálném čase.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Pokud není síťové připojení dobré, můžete zaznamenat následující omezení:

- Některé funkce budou omezeny, například objednání případu, vytvoření případu, sdílení přes Case Talk a cloud synchronizace.
- Celkový výkon služby může být snížen vlivem síťového prostředí.

V tomto případě můžete přejít do režimu Offline, abyste mohli provádět základní úkoly. Po připojení bude možné používat funkce, které vyžadují internet.

Poznámka

Symbol sítě označuje rychlost odezvy mezi aktuální oblastí a AWS (Amazon Web Service). Neznamená to rychlost vaší sítě, takže někdy může ukazovat stav jako špatný nebo nevhodný, i když je rychlost vaší sítě dostatečně vysoká.

Pokud druhý proces používá stejnou síť, rychlost může být špatná nebo nedostatečná a celkový výkon Medit Link může být neuspokojivý. V tomto případě prosím nesdílejte síť s jinými procesy.

Například funkce „Nahrát surová data“ je velkou součástí síťového procesu. Pokud symbol ukazuje špatný nebo nedostatečný stav, přejděte do Nastavení > Nahrát surová data a vypněte možnost „Nahrát automaticky“.

Nastavení

Obecné

Poskytuje možnosti pro celkové nastavení systému.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links: General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is titled 'General' and includes the following settings:

- Save Folder:** C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/
- Language Settings:** English (dropdown)
- Teeth Labeling:** FDI (selected), US
- Notification:** Allow Notifications (checked)
- Upload Raw Data:** Upload Automatically (checked)
- Quick Scan:** Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information. Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan (unchecked)
- Viewing Options:** Advanced Rendering (checked), Adjust Color Texture (slider)
- Medit User Experience Improvement Program:** We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Buttons at the bottom include 'About', 'User Guide', 'Apply', and 'Close'.

Složka uložení	Zadejte složku, do které se budou ukládat výsledky dat, generované z Medit Link a připojených programů.	
Nastavení jazyků	Vyberte jazyk programu.	
Značení zubů	Vyberte systém označování zubů mezi FDI a USA.	
Upozornění	Po zaškrtnutí budete dostávat upozornění na aktualizace programu.	
Nahrát surová data	Po zaškrtnutí se surová data automaticky nahrávají do cloudu. Pomáhá zálohovat původní data a provádět bezproblémové skenování při použití aplikace Medit Link se stejným účtem na jiném počítači. Platí pouze původní záloha dat do cloudu na data získaná v Medit Scan for Clinics.	
Rychlý sken	Zvolte, zda chcete, aby se níže uvedené fáze skenování automaticky zobrazovaly v Medit Scan for Clinics, aniž byste museli vyplňovat informace z formuláře. • Předoperační pro maxillu • Předoperační pro mandibulu • Sken obličeje	
Možnosti zobrazení	Pokročilé vykreslení	Po zaškrtnutí se 3D model zobrazí v živějším a realističtějším vykreslení.
	Upravit texturu barev	Upravíte jas 3D modelu. * Výsledné barvy se mohou mírně lišit od Medit Link, když stejná data otevřete v jiném softwaru.
Program zlepšování uživatelské zkušenosti Medit	Přidejte se k Programu zlepšování uživatelské zkušenosti Medit. • Shromážděné informace používáme ke zlepšení našich produktů a služeb. • Neshromáždíme žádné informace, které by identifikovaly konkrétního jednotlivce.	


Výchozí stránka po přihlášení

Vyberte výchozí menu, které se zobrazí při spuštění programu.

- Účty kliniky si mohou vybrat mezi Patient a Case Box
- Účty laboratoře si mohou vybrat mezi In Box a Work Box

Správce úložiště

Zkontrolujte a spravujte místní a cloudový úložný prostor.

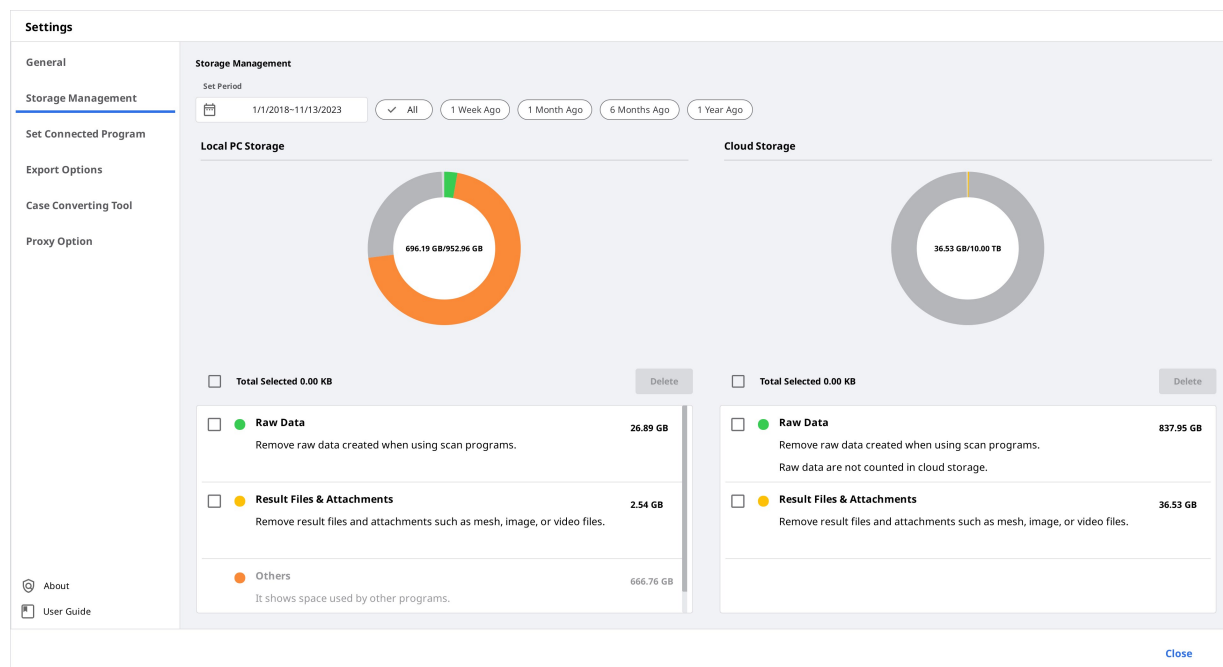

Nastavit období

Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci.

- Vše: Zobrazit všechny soubory.
- Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření.
- Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření.
- Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření.
- Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.

Místní úložiště

Správa úložného prostoru počítače.

Surová data	Odeberte vybraná surová data z počítače. Pokud jsou již surová data nahrána do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Výsledky & Přílohy	Odstraňte z počítače výsledky a soubory příloh, jako je mesh síť, obrázky a videa. Pokud jsou tyto soubory již nahrány do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Jiné	Zobrazit soubory používané k ovládání systému a dalších programů. Zobrazuje úložiště vašeho PC. Tyto soubory nemůžete odstranit z Medit Link.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z počítače.


Cloud úložiště

Správa úložného prostoru cloudu.

Surová data	Surová data nezabírají prostor v cloud úložišti, takže nebudou v pi-grafu. V případě potřeby však odtud můžete spravovat surová data, například je smazat, abyste ochránili soukromé informace pacienta, atd.
Výsledky & Příloha	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudovém úložišti. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Zakoupit úložiště	Pokud máte tarif Standard, přihlaste se k odběru Premium a rozšiřte své cloudové úložiště.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo v úložišti.

Nastavit propojený program

Spravujte programy, které podporují integraci v Medit Link.

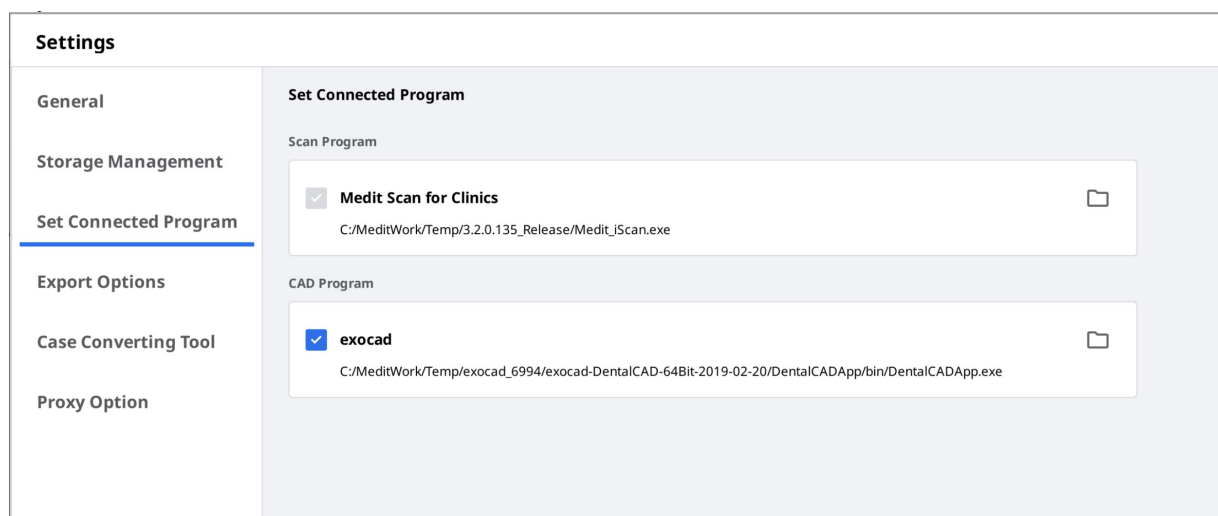

Můžete připojit následující programy:

	Účet kliniky	Účet laboratoře
Skenovací program	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CAD Program	exocad	exocad

Poznámka

Integrace následujících služeb není k dispozici pro Medit Link pro Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)
- [exocad](#)

Možnosti exportu

Nastavte způsob exportu souborů z Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:/YHGarn_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

Typ CAD	Vyberte program CAD, který chcete použít pro navrhování. Program upraví výsledky na základě vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v návrhu bez jakéhokoli dalšího zarovnání os.
Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit výsledky.
Mesh formát	Specifikujte formát koenčného souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat & Kombinovat	Zkomprimovat soubory: Zkomprimujte všechny výsledky do jednoho souboru. Kombinovat individuální struktury: Kombinuje všechny výsledky pro maxillu nebo mandibulu do jednoho souboru. Když používáte některé programy, které neumějí importovat a pracovat s více soubory, můžete je sloučit do jednoho a pracovat v těchto programech.
Možnosti, pokud stejná složka nebo soubor již existuje.	Vyberte výchozí akci pro případy, kdy v cílové cestě existuje stejná složka nebo název souboru. • Při exportu se vždy zeptat. • Exportovat nový soubor a přepsat stávající soubory. Aktuálně uložený soubor bude ztracen. • Vytvořit složku a exportovat soubory
Pravidlo pro název složky	Definujte pravidla pro vytváření názvu složky při exportu souborů. Na pojmenování složek se použijí nastavená pravidla a exportovaný soubor se uloží do vytvořené složky. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky

60

Pravidlo pro název souboru	Definujte pravidla pro název exportovaného souboru. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. - Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky - Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky
---	--

Nástroj pro převod případů

Případy můžete přesouvat mezi různými účty exportem existujících případů účtu nebo importem případů exportovaných z jiných účtů.

Exportovat případ

Exportujte případy aktuálně přihlášeného účtu do lokálního PC.

1. Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To
C:/Users/안영하/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. V části Exportovat nastavte období nebo vyhledejte v případě potřeby případy k exportu.

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name
☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. Vyberte případy, které chcete exportovat, ze seznamu v sekci „Soubory k exportu“.

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Nastavte název souboru úpravou názvu případu v poli Název souboru.
6. Nastavte cílovou složku pro export vybraných případů.
7. Klikněte na „Exportovat“.
8. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, do které byl soubor exportován.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Exportované případy jsou uloženy ve formátu souboru .meditex.

Importovat případ

1. Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_carries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. V části Importovat klikněte na ikonu složky a vyhledejte v počítači soubor .meditex, který chcete importovat.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

4. Klikněte na tlačítko „Importovat“ a v seznamu níže zaškrtněte soubory, které chcete importovat.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Importovaný případ se také objeví ve vašem Case Box (Účet kliniky) nebo Work Box (Účet

laboratoře).

Proxy možnosti

V některých omezených síťových prostředích můžete změnit nastavení sítě.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Proxy Option' tab selected. The 'Proxy Server' toggle is turned on. Below it, there are input fields for 'Proxy Server IP (or DNS)' (containing '192.168.1.1'), 'Proxy Server Port' (containing '8080'), and 'Proxy Server Scheme' (with radio buttons for 'HTTP' and 'HTTPS', where 'HTTPS' is selected). There are also optional fields for 'Proxy Server Username' and 'Proxy Server Password'. At the bottom left, there are links for 'About' and 'User Guide'. At the bottom right, there is an 'Apply' button. A 'Close' button is located at the bottom right of the window frame.

O programu

Zobrazit detailní informace o Medit Link.



Uživatelská příručka


Získejte uživatelskou příručku pro Medit Link.

Otevření Uživatelské příručky vyžaduje připojení k internetu.

Menu

Dashborad

Celkové statistiky, provedené na Medit Link, si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách – jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

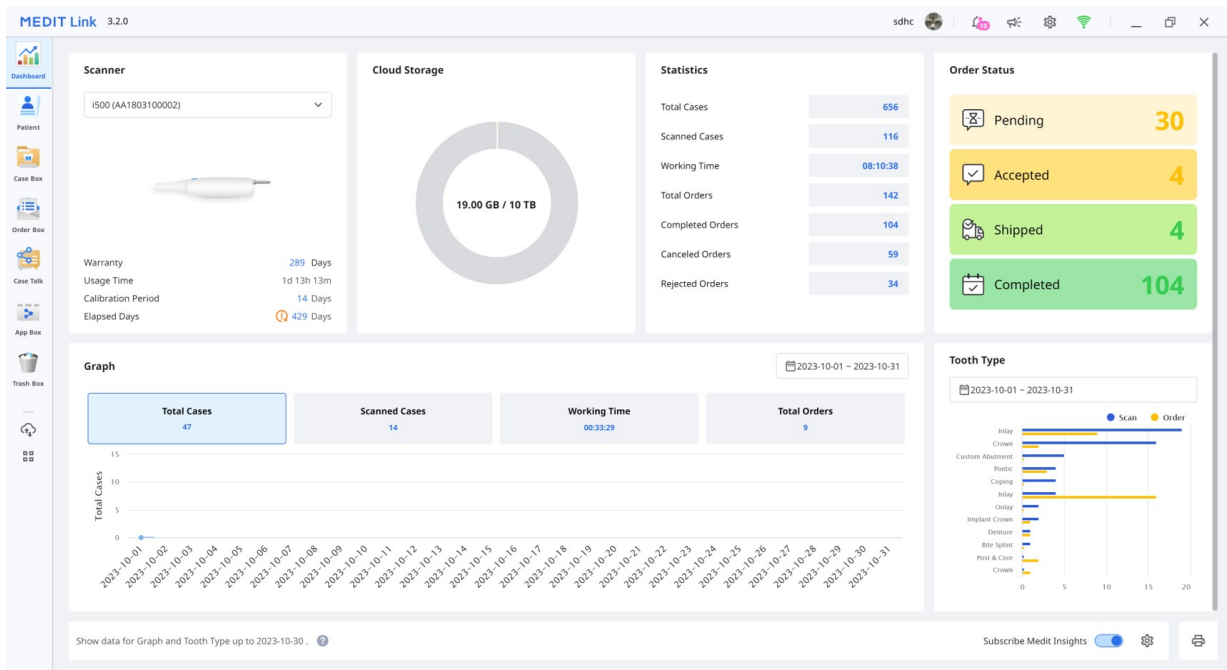

Poznámka

Viz [Web Medit Link > Dashboard](#) pro více informací o Dashboardu a Medit Insights.

Patient

V menu Patient můžete přidávat, upravovat, odstraňovat nebo slučovat pacienty.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Patient

Total Patients: 106

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Přidat nového pacienta

1. Klikněte na „Nový pacient“.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně Nový pacient a poté klikněte na „Uložit“.

Odstranit pacienta

Poznámka

Pokud pro pacienta neexistují žádné případy, jen tehdy můžete pacienta smazat.

1. Vyberte pacienta, kterého chcete ze seznamu odstranit.

Patient

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒	Temporaries				0	2023-10-04	
☒	T.O.P	카미야	♂	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Klikněte na „Odstranit“.

Spojit pacienty

Všechny případy více pacientů můžete sloučit do jednoho pacienta.

1. Ze seznamu vyberte pacienty, které chcete sloučit.

Patient

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒	Temporaries				0	2023-10-04	
☒	T.O.P	카미야	♂	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Klikněte na „Sloučit pacienty“.
3. Vyberte cílového pacienta, do kterého chcete sloučit všechny případy.
4. Všechny případy budou sloučeny do cílového pacienta a informace o pacientovi pro cílového pacienta budou zachovány.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel
Apply

5. Klikněte na „Použít“ pro pokračování ve sloučení.

Case Box/Work Box

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

- 1 Zobrazí název případu a jméno pacienta.
- 2 Poskytuje dostupné klíčové funkce: tlačítka Objednávka/Skenovat (Otevřít)/Objednat a ikony aplikací.
- 3 Zobrazit dostupné záložky: Formulář, CAD a Prohlížeč souborů.
- 4 Zobrazit funkce pro správu případů a souborů.
- 5 Zobrazit uživatelské rozhraní pro registraci formuláře pro vybraný CAD program.
- 6 Poskytněte uživatelům informace o typu/způsobu/materiálu/odstínu, které si mohou vybrat pro vybrané číslo zubu.
- 7 Ukažte informace o typu/metodě/materiálu/odstín, aplikované na vybrané zuby.

Záložky v Case Box/Work Box

Formulář	CAD	Prohlížeč souboru
----------	-----	-------------------

Záložka formuláře poskytuje uživatelské rozhraní pro zadávání základních informací pro skenování, jako je typ, metoda, materiál pro čísla zubů a možnosti skenování. Informace, které zadáte, jsou předány do připojeného skenovacího programu a použity jako informace o objednavce při zadávání objednávky u vašeho partnera.	Záložka CAD poskytuje uživatelské rozhraní pro nastavení možností CAD. Informace, které nastavíte, budou předány do přepojeného CAD programu.	Prohlížejte si výslední soubory, generované skenovacími programy a CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.
--	---	---


Funkce v Case Box/Work Box

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující funkce.

	Stav případu	Zobrazí stav případu.
	Přejít na detaily	Poskytuje zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Info o případu	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky & Značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případu svým partnerům.
	Historie případu	Poskytuje detailní informace o historii případu. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Odstranit	Odstranit případ. Nelze odstranit objednané případy nebo případy vytvořené offline.
	Klonovat	Vytvořte duplikát aktuálního případu v Case Box. Všechna data budou zkopírována do klonovaného případu. Tato funkce pomáhá replikovat informace o léčbě pro stejného pacienta nebo vytvořit další objednávku se stejnými informacemi nebo soubory.
	Připojit	Připojte soubory v různých formátech.
	Exportovat	Exportujte soubory s výsledky skenování nebo CAD do lokálního počítače. Při exportu souborů si můžete vybrat preferovaný formát souboru. Exportované soubory lze použít pro další práci v CAD a CAM softwaru.

	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů. Odkaz můžete volně sdílet s kýmkoli nebo pouze s konkrétními lidmi. Pro zabezpečení soukromých informací lze nastavit PIN kód nebo datum vypršení platnosti odkazu.
	Odeslat žádost o podporu	Přejděte na stránku Centra nápovědy Medit a odešlete žádost o podporu.

Order Box/In Box

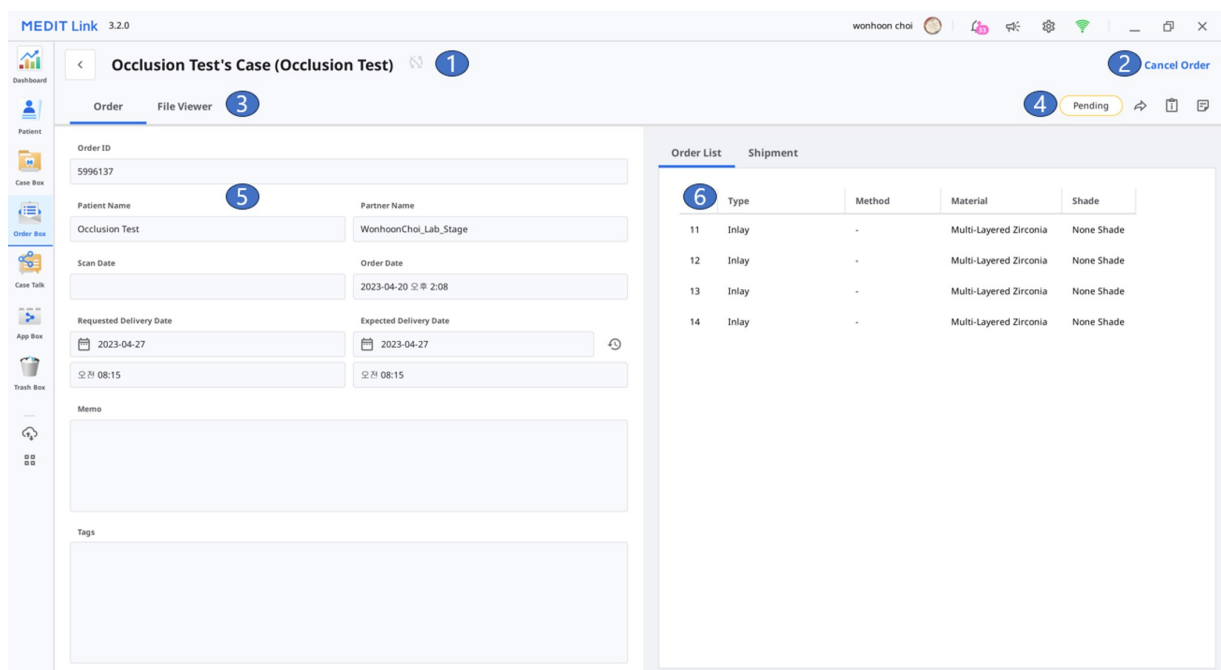

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení).
3	Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případě, připomínky & značky, atd.
5	Zobrazit podrobné informace o objednávce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky.
6	Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení.

Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace související s objednávkou, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínka a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.


Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím Case Talk v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

Poznamka

Služba Case Talk vyžaduje připojení k internetu.

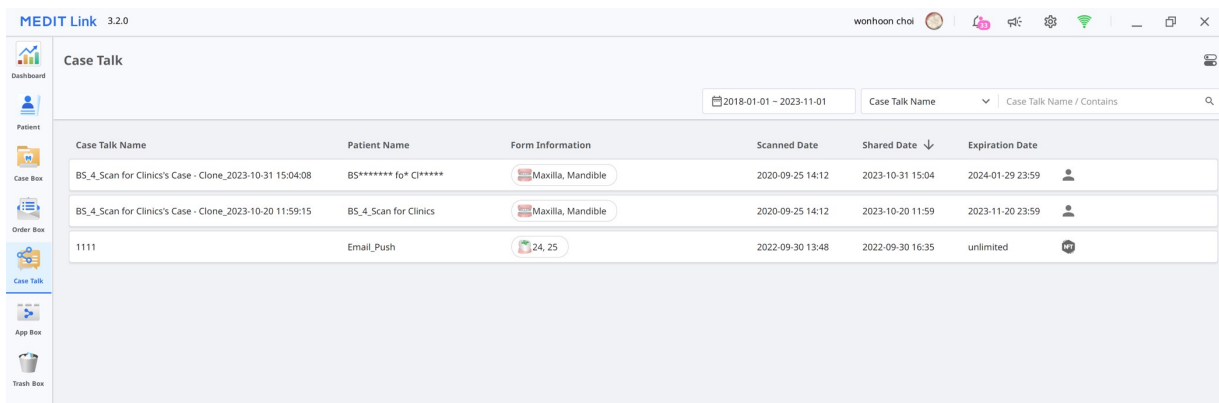

The screenshot shows the Medit Link 3.2.0 interface. The top bar includes the user name 'wonhoon choi' and various system icons. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk (selected), App Box, and Trash Box. The main area is titled 'Case Talk' and displays a table of shared cases. The table has columns for Case Talk Name, Patient Name, Form Information, Scanned Date, Shared Date, and Expiration Date. There are three rows of data.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** f* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.

App Box

App Box poskytuje různé doplňkové programy, doplňující váš základní pracovní postup skenování a zvyšující produktivitu.

App Box se skládá z „Medit Apps“, které zahrnují originální aplikace vyvinuté Medit, a „Partner Apps“, což jsou integrační aplikace s partnery Medit z různých odvětví digitální stomatologie, jako je 3D tisk, CAD/CAM software, atd.

Stáhněte si dostupné aplikace z Medit Apps a Partner Apps, abyste mohli vytvářet dentální přístroje, analyzovat skenovací data, získat pomoc při konzultaci nebo zefektivnit váš pracovní proces.

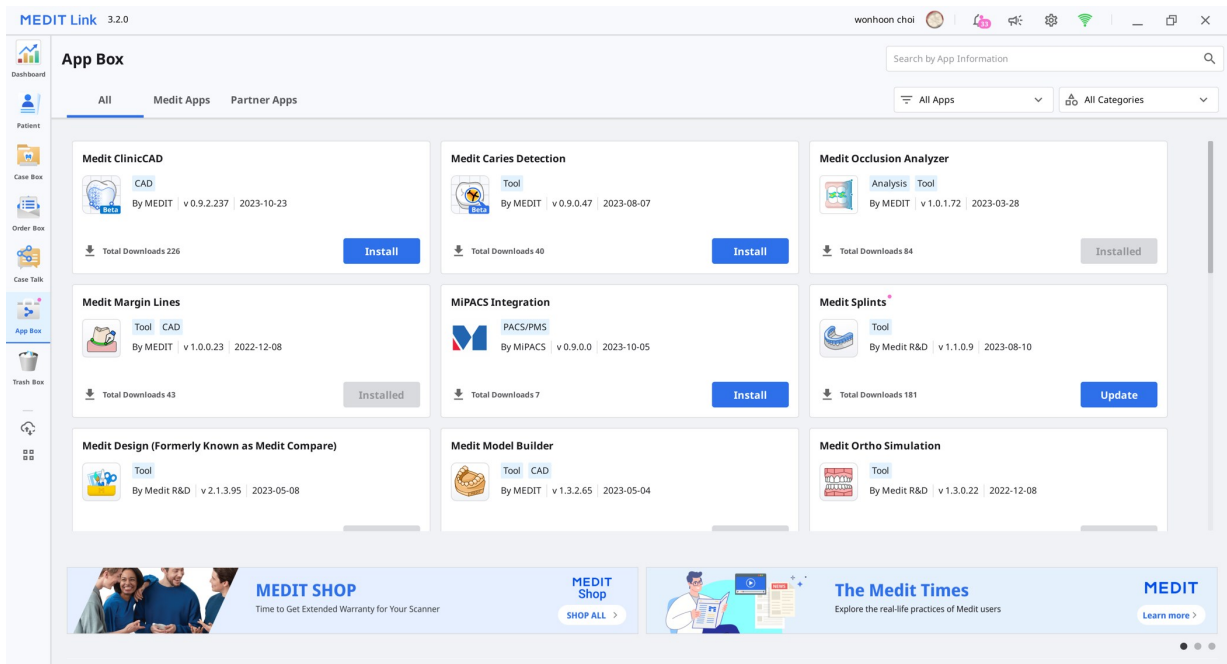

Trash Box

Trash Box dočasně ukládá odstraněné případy. Jakýkoli případ v Trash Box lze buď obnovit nebo trvale odstranit.



Pozor

Data, smazaná z Trash Box, budou trvale smazána z vašeho počítače a serveru a nelze je obnovit.

Trash Box

Restore | Selected Cases: 0

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Scan Completed	Jlra_잉플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	잉플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Správce synchronizace případů

Správce synchronizace případů vám pomůže nahrávat a stahovat případy v Medit Link. Do cloudu můžete nahrát více případů nebo je stáhnout přímo do místního počítače.

[illegible]

Nahrát

Počet případů / Vybrané případy	Zkontrolujte počet všech/vybraných případů, které je třeba nahrát.
Nahrát vše	Nahraje všechny případy do cloudu.
Zrušit vše	Zruší všechny požadavky na nahrání.
	Nahraje případ do cloudu.
	Zruší nahrávání případu.
	Zkusí případ nahrát znovu.

Stáhnout


Počet případů / Vybrané případy	Zkontrolujte počet všech/vybraných případů, které je třeba stáhnout.
Stáhnout vše	Stáhnout všechny případy do počítače.
Zrušit vše	Zruší všechny požadavky na stažení.
	Stáhnout případ do počítače.
	Zruší stahování případu.
	Zkusí případ stáhnout znovu.

Informace Medit

Můžete přejít přímo do menu, dostupného pouze na webu Medit Link, jako jsou My Info, Partners and Membership. Podívejte se prosím na Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) a [My Info](#) pro detailní popisy webového menu Medit Link.

Můžete vstoupit do online obchodu Medit, Medit Shop, kde si můžete zakoupit prodloužené záruky na skenery a další zboží Medit, jako jsou například batohy na skenery.

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Centrum nápovědy, Medit Academy YouTube kanál a Medit Academy online vzdělávací platforma.

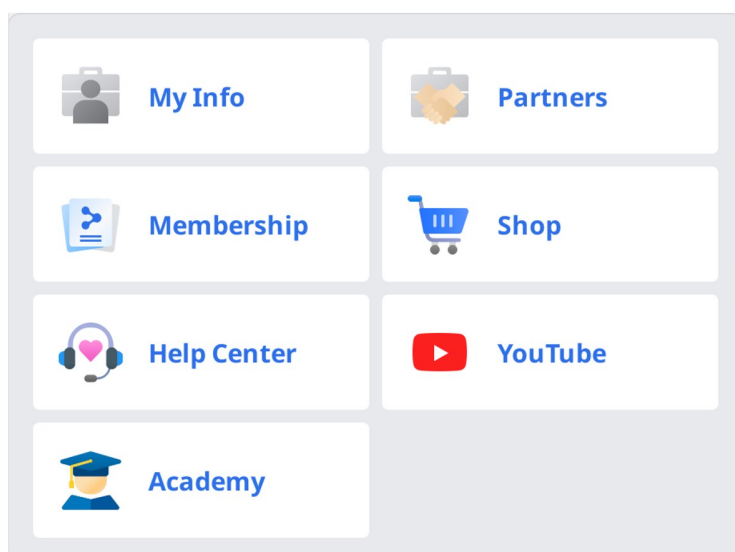

Prohlížeč souboru

File Viewer seskupuje a zobrazuje různá data, včetně dat získaných z programů, propojených s Medit Link a dat připojených uživateli.


Poskytuje základní funkce správy, jako je zobrazení/skrytí dat, úprava opacity a mazání dat.

Podporuje náhledy souborů v následujících formátech:

- 3D data: STL, OBJ, PLY
- 2D obrázky: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video soubory: MKV, MP4, AVI, WMV

Datový strom

Všechna data pro daný případ můžete seskupit a zobrazit v datovém stromu. Můžete také zobrazit/skrýt data, upravit průhlednost a odstranit data ze stromu dat.

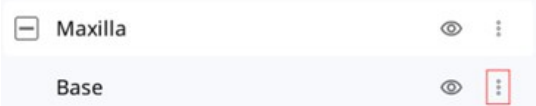	Zobrazit / Skrýt	Data můžete zobrazit nebo skrýt.
	Opacita	Po kliknutí na jedno z dat v datovém stromu se zobrazí posuvník. Přesunutím posuvníku můžete upravit opacitu zobrazených dat. 
	Více	Klepnutím na ikonu Více zobrazíte další dostupné funkce.  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data, zobrazí pouze odpovídající data. • Skrýt: Skryje data. • Duplikovat: Zkopíruje data a přidá je do skupiny příloh. • Exportovat: Export vybraných souborů. • Přejmenovat: Změnit název dat. • Smazat: Smaže data.





Poznámka

Data můžete přejmenovat v online režimu.

Nástroje pro ovládání modelu

3D ovládání modelu

	Panorámováť	Posunout model.
	Otočit	Otočit model.

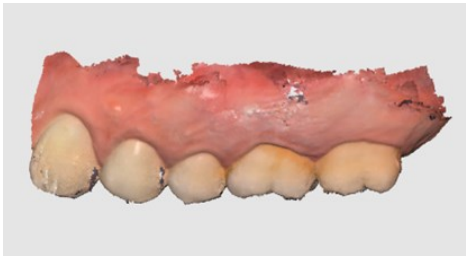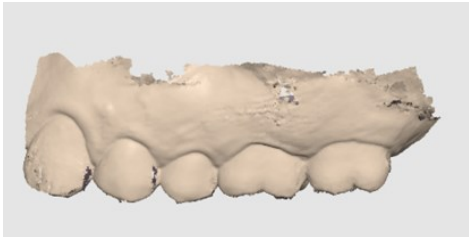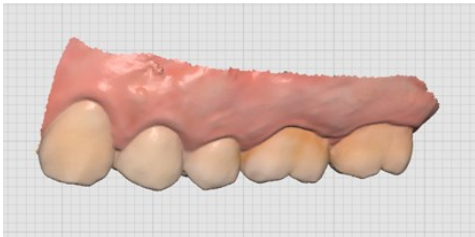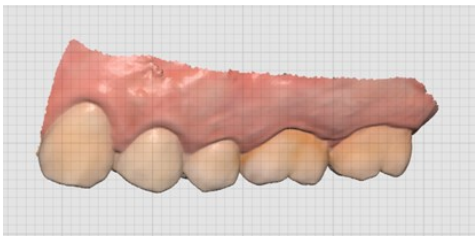	Přiblížit/Oddálit		Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení		Model se pozicuje do středu obrazovky.
	Režim Zobrazení modelu	Zapnout texturu	Zobrazte data ve skutečných barvách textury. 
		Vypnout texturu	Zobrazí data v jedné barvě. 
	Nastavení mřížky (mm)	Mřížka zapnuta	Zobrazuje mřížku na pozadí. 
		Zapnout potah	Překryjte model mřížkou. 
		Mřížka vypnuta	Skryje mřížku.

Ovládání 2D obrázků


	Další/Předchozí obrázek	Pohybuje se mezi obrázky.
	Upravit	Upravit obrázek.
	Okno Stažení/Vložení	Okno obrázku můžete odpojit a upravit do požadované polohy. Můžete změnit velikost okna. Když je okno obnoveno do původního umístění, vrátí se do výchozí velikosti.

Funkční nástroje

Zachycení obrázku a Poznámka


Zachyťte aktuální obrazovku jako 2D obrázek, kreslete na něj nebo přidejte poznámky.

Obrázek můžete uložit jako soubor s vašimi poznámkami a odeslat jako referenci.

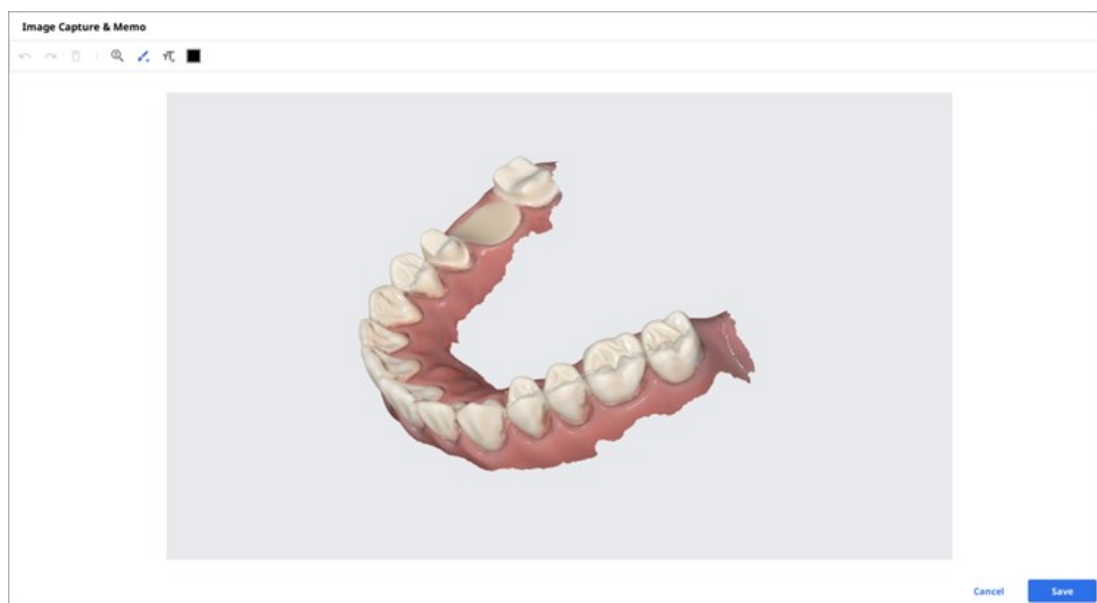

Ortho zachycení

Snímá snímky v aktuálním směru pohledu a také vrchní/spodní/levou/pravou stranu z aktuálního směru pohledu.

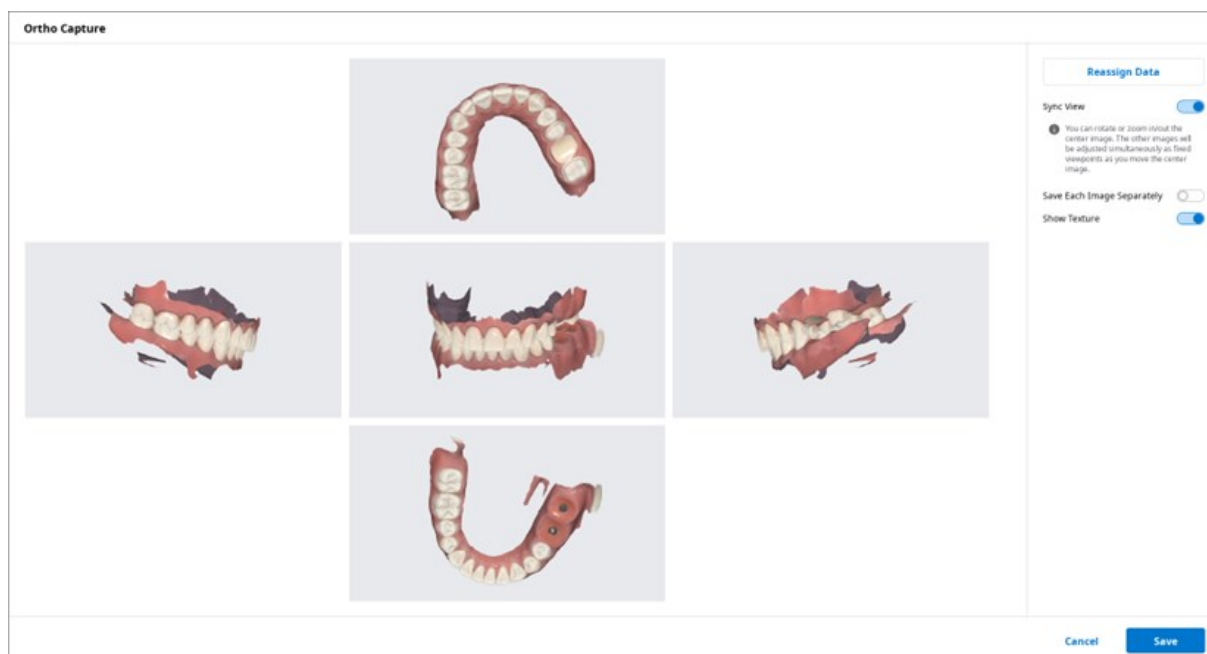


Zobrazení synchronizace

Když je zapnutý, můžete otáčet nebo přibližovat/oddalovat středový obrázek. Když budete pohybovat středovým obrazem, ostatní obrázky budou upraveny současně jako pevná zorná pole.

Při vypnutí všechny obrázky můžete panorámovat, otočit nebo přiblížit/oddálit jednotlivě.


Uložit každý obrázek zvlášť

Uložte každý obrázek ve vysokém rozlišení.

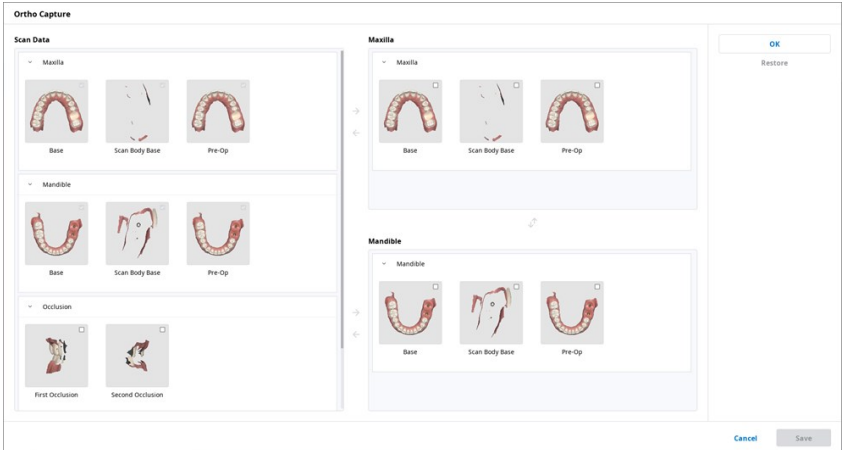Zobrazit texturu	Zapnout/vypnout texturu modelu.
Znovu přiřadit data	Data pro maxillu/mandibulu změňte pomocí funkce Znovu přiřadit data. Změněná data můžete použít k vytvoření a využití výsledných snímků z Ortho zachycení.  • Skenovací data: Jsou zobrazena všechna skenovací data pro daný případ. • Maxilla: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro maxillu. • Mandibula: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro mandibulu.


Vyplnit mezery

Vyplnit mezery v datech 3D sítě.

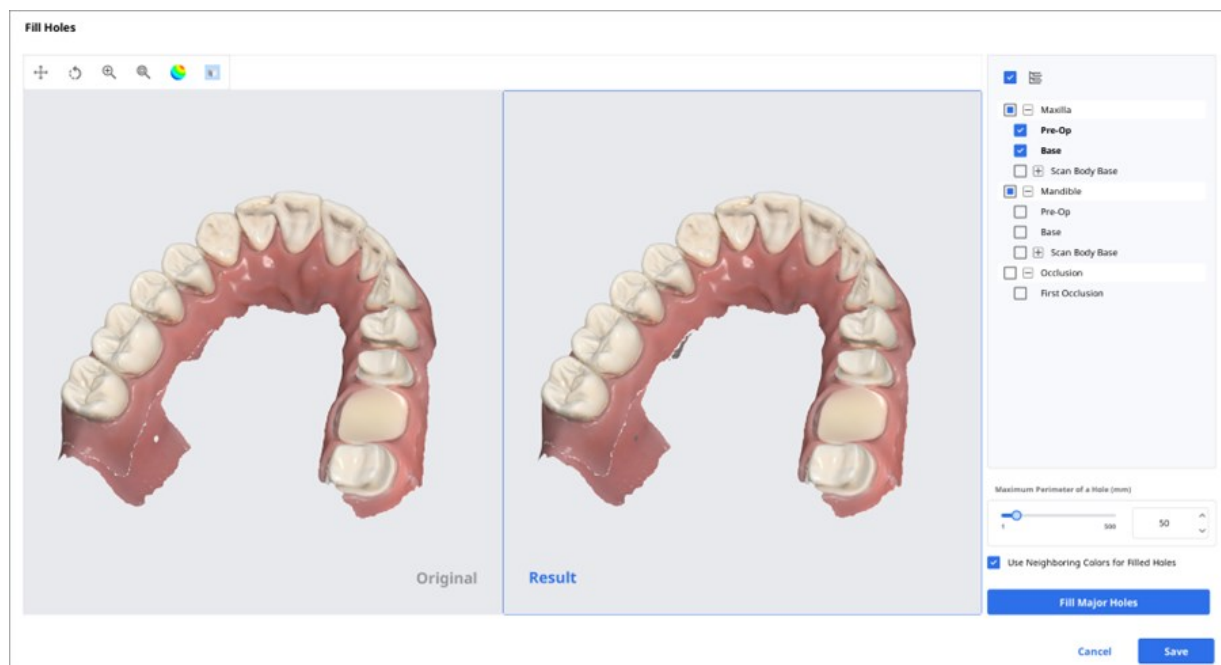

Ořezávání


Ořezávání poskytuje různé nástroje pro úpravu dat.

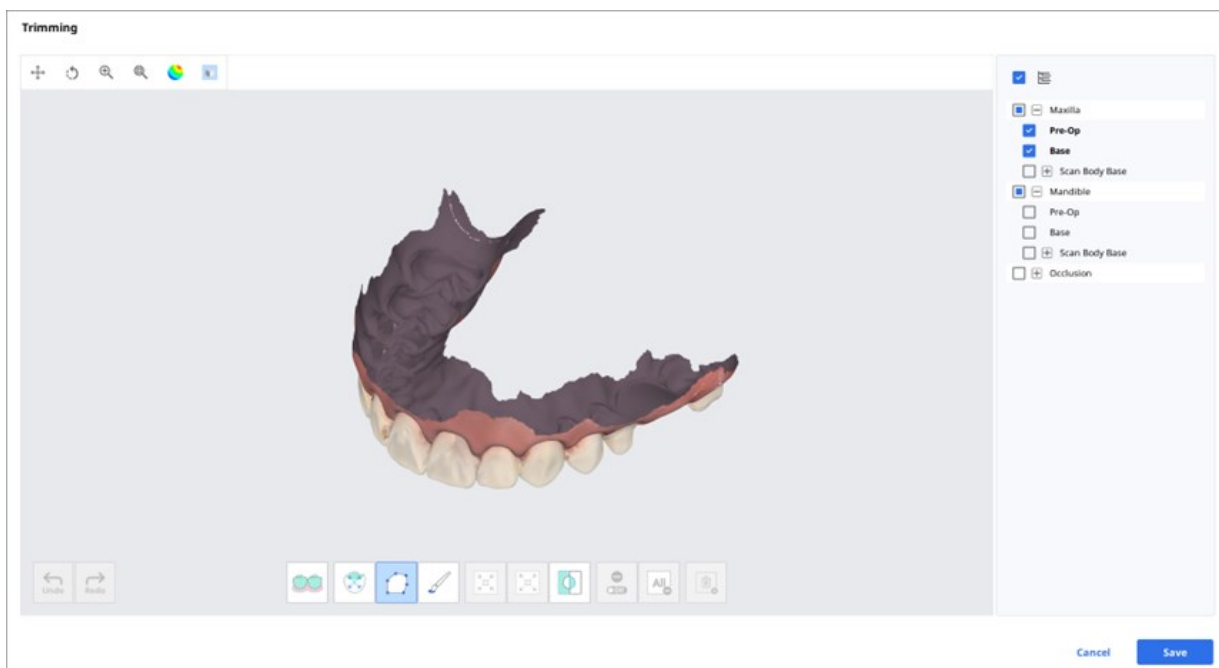

Vybraná 3D mesh data lze upravovat pomocí různých nástrojů, umístěných ve spodní části okna.

Výběr		Chytrý výběr zubů	Automaticky vybere všechny zuby oblouku a vynechá části dásně. Poznámka Tato funkce je k dispozici pouze pro skenovaná data, získána využitím Medit Scan for Clinics se zapnutou možností „Použít GPU“.
		Chytrý výběr jednoho zubu	Automaticky vyberete oblast jednoho zubu kliknutím. Na zub můžete kliknout nebo jej přetáhnout.
		Výběr vícebodové linie	Vybere všechny entity ve tvaru vícebodové křivky, nakreslené na obrazovce.
		Výběr štětce	Vyberte všechny entity na volně nakreslené linii na obrazovce. Bude vybrána pouze přední strana obličeje. Štětec má tři různé velikosti.
Úprava vybrané oblasti		Zmenšit vybranou oblast	Zredukuje vybranou oblast každým zmáčknutím tlačítka.
		Rozšířit vybranou oblast	Rozšíří vybranou oblast při každém stisknutí tlačítka.
		Invertovat vybranou oblast	Invertovat výběr.
Zrušení výběru		Výběr/Zrušení výběru	Při zapnutí zrušíte výběr oblasti pomocí různých nástrojů.
		Vymazat kompletní výběr	Vymaže všechny vybrané oblasti.
		Smazat vybranou oblast	Vymažte data z vybrané oblasti.

1. Vyberte oblast, kterou chcete oříznout, pomocí nástroje výběru oblasti.

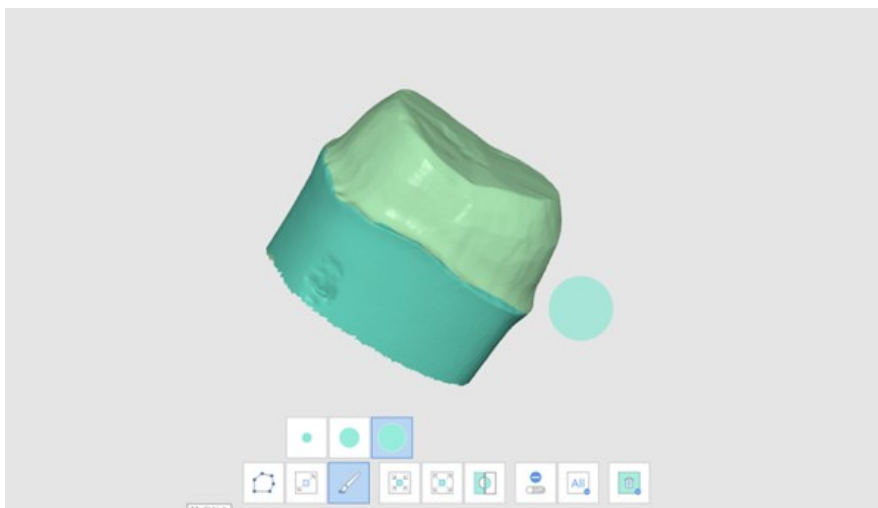


Poznámka


Nástroj Ořezání křivkou vybere všechny entity ve tvaru křivky, nakreslené na obrazovce, zatímco Ořezání štětcem vybere pouze data přední strany obličejce.

2. Pomocí následujících tří nástrojů můžete výběr invertovat, zmenšit nebo rozšířit.


- Invertovat vybranou oblast

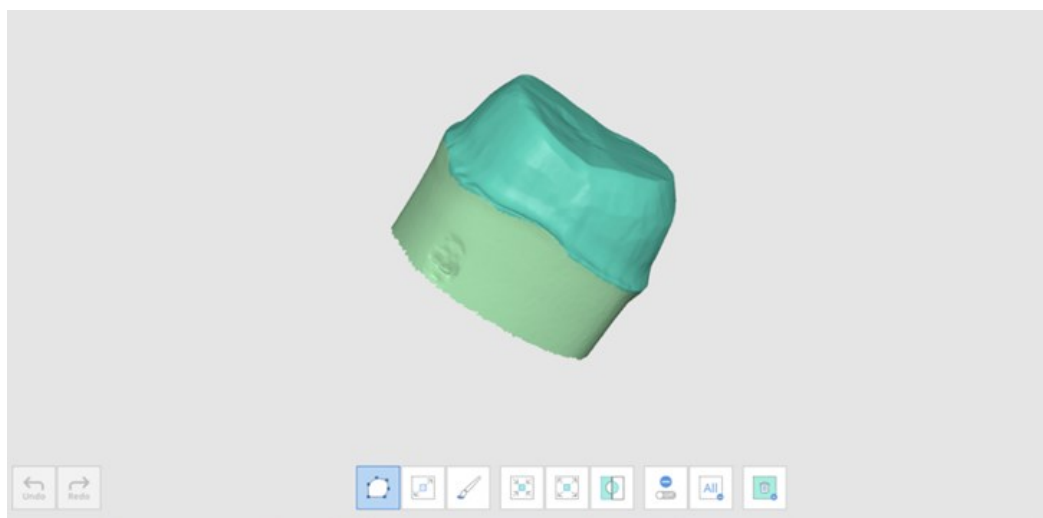

- Zmenšit vybranou oblast

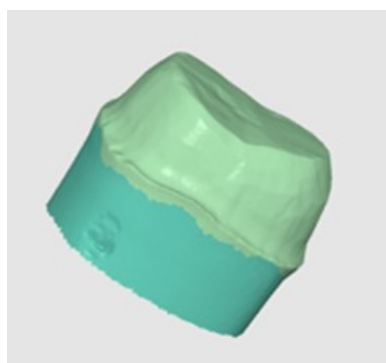


- Rozšířit vybranou oblast

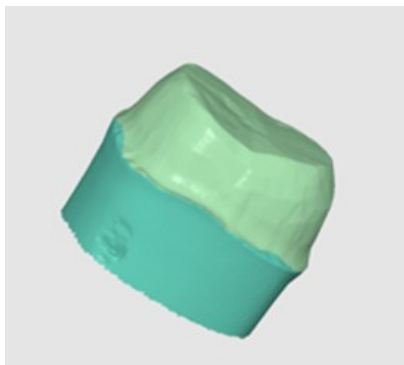

3. Označení vybraných oblastí můžete zrušit pomocí nástroje Smazat vybranou oblast.



Optimalizovat zarovnání okluze

Optimalizovat zarovnání okluze. Můžete si vybrat cílová data a upravit zarovnání okluze.

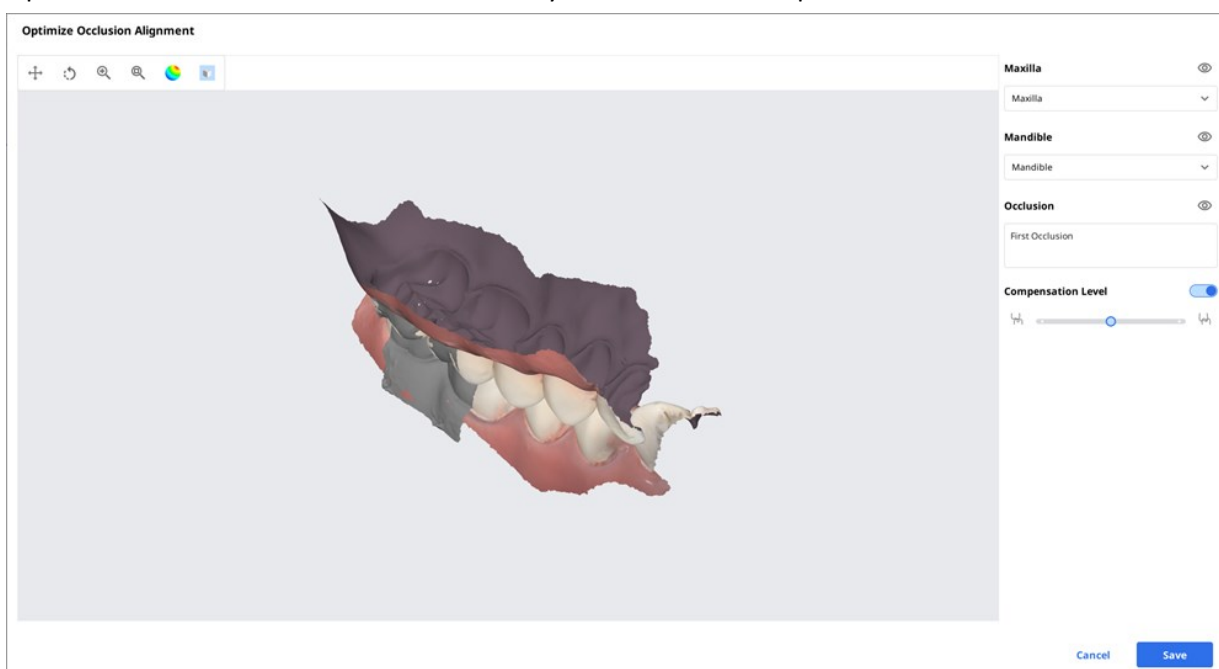


Úroveň kompenzace

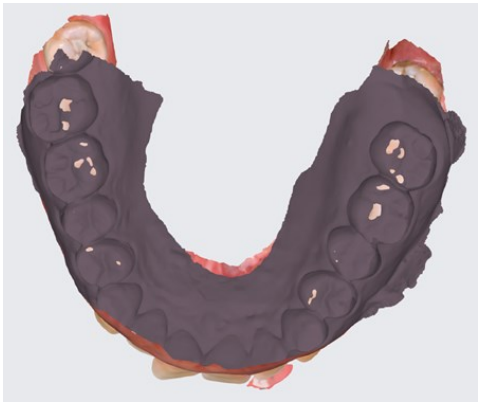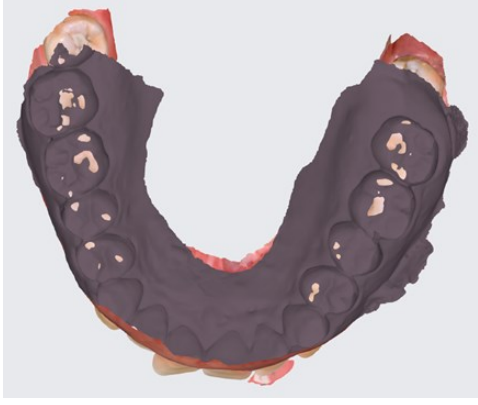

Střední	Compensation Level 	
Vysoká	Compensation Level 	
Vypnout	Compensation Level 	

Pohyb mandibuly

Můžete si přehrát pohyby mandibuly, zaznamenané v Medit Scan for Clinics, abyste viděli dynamické okluzní kontakty mezi horními a dolními denticemi.

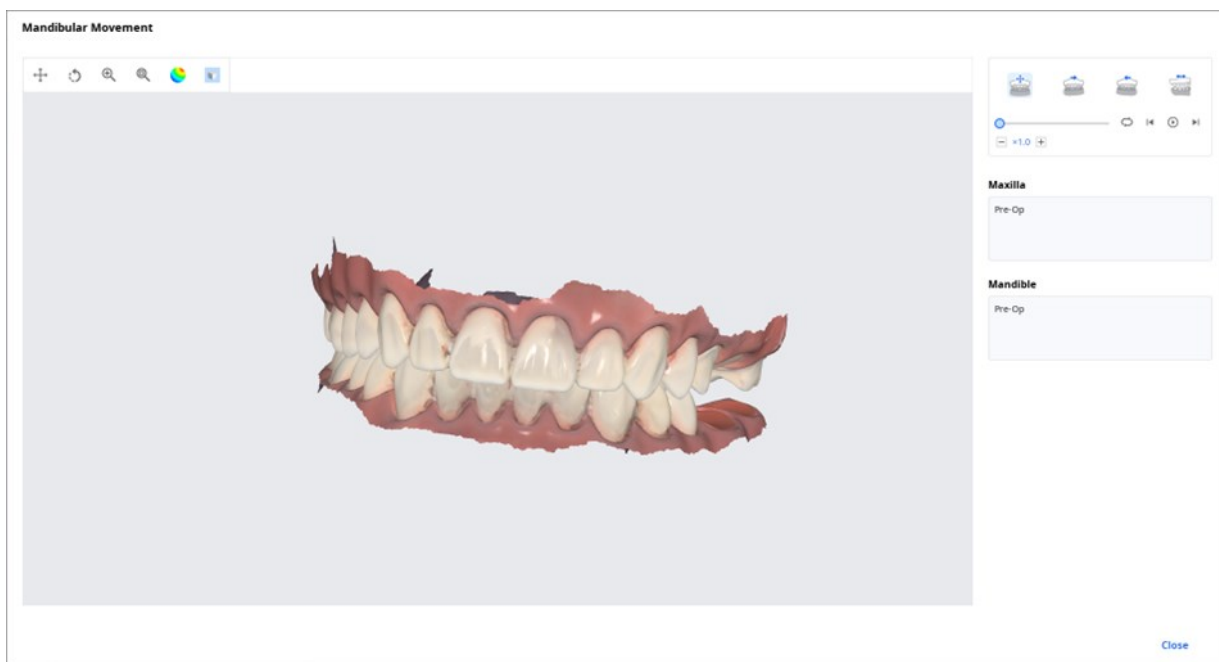

	Volný pohyb	Přehrát záznam volného pohybu mandibuly.
	Levý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doleva.
	Pravý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doprava.
	Protruzivní pohyb	Přehrajte záznam mandibuly, pohybující se vpřed.

Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů

Z aplikace Medit Scan můžete získat více výsledků dat okluze.

Medit Link poskytuje funkci pro správu výsledků prostřednictvím „Prohlížeče souborů“.

Jak spravovat více výsledků


Když uživatel získá více výsledků okluze z Medit Scan for Clinics, Medit Link nabízí možnost vybrat konkrétní výsledek.

Seznam výsledků je uveden podle názvu a můžete vybrat pouze jednu položku.

Vybraný model se zobrazí v „Datovém stromu“ a „Oblasti zobrazení modelu“.



Seznam můžete sbalit a změnit položku využitím ikon šipek.

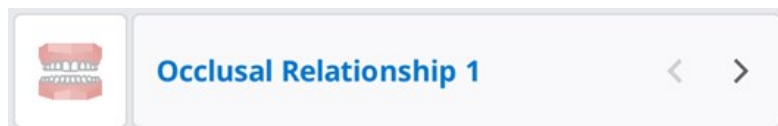

Možnosti zobrazení

Můžete změnit Možnosti zobrazení s cílem přizpůsobit rozvržení seznamu případů v Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtry stavu

Zobrazí nebo skryje každý filtr, představující stav případu. Skryté stavové filtry se nezobrazují na obrazovce v Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Pomocí filtrů stavu snadno najdete případ, který potřebujete.

- Kliknutím na stav, který chcete zobrazit, zobrazíte pouze případy v tomto stavu.
- Můžete vybrat více stavů najednou.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti filtrování:

Box	Filtry stavu
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Položky tabulky

Vyberte položky, které se mají zobrazit v seznamu případů v Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Můžete změnit pořadí položek tabulky nebo upravit šířku sloupce tabulky v zobrazení do seznamu, abyste co nejlépe optimalizovali tuto funkci pro uživatelské prostředí.

Pro každý box jsou k dispozici následující položky tabulky:

Box	Položky tabulky
Patient	Jméno pacienta / ID pacienta / Pohlaví / Počet případů / Datum registrace / Datum narození
Case Box	Stav / Název případu / Datum narození / Informace formy / Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře

Order Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání / Název laboratoře / Požadované datum dodání / Poslední změna
In Box	Stav / Název případu / Datum objednání / Požadované datum dodání / Poslední změna / Název kliniky
Work Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Informace formy / Poslední změna / Požadované datum dodání / Datum skenování / Název kliniky / Datum objednání

Typ zobrazení

Změňte typ zobrazení mezi Zobrazením galerie a Zobrazením do seznamu v Case Box.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti typu zobrazení:

Box	Možnosti typu zobrazení
Patient	Zobrazení do seznamu
Case Box	Zobrazení do seznamu / Zobrazení galerie
Order Box	Zobrazení do seznamu
In Box	Zobrazení do seznamu
Work Box	Zobrazení do seznamu

Seskupení

Vyberte možnost seskupení pro klasifikaci a změnu uspořádání případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti seskupení:

Box	Možnosti seskupení
Case Box	Žádné / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání
Order Box	Žádné / Datum skenování / Datum objednání / Požadované datum dodání
In Box	Žádné / Datum objednání / Požadované datum dodání
Work Box	Žádné / Požadované datum dodání

Poznámka

Možnosti seskupení nejsou dostupné v Patient, Case Talk a Trash Box.

Seřazení

Výběrem možnosti třídění změníte pořadí případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti třídění:

Box	Seskupení	Možnosti seřazení
Patient	-	Jméno pacienta / ID pacienta / Datum narození / Datum registrace / Počet případů
	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře

Case Box	Jméno pacienta	Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum skenu	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Název laboratoře
Order Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Datum skenu	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenování / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
In Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenování / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta/ Datum objednávky / Název kliniky
Work Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta/ Poslední změna / Název kliniky


Poznámka

Možnosti seřazení nejsou dostupné v Case Talk a Trash Box.


Filtrování a vyhledávání

Filtrovat podle pacienta


Filtrovat a zobrazit případy podle jména pacienta. Můžete vytvořit seznam vyfiltrováním pouze pacientů, se kterými potřebujete pracovat.

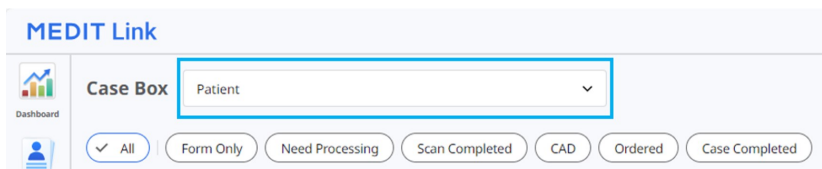

1. Zadejte jméno pacienta.

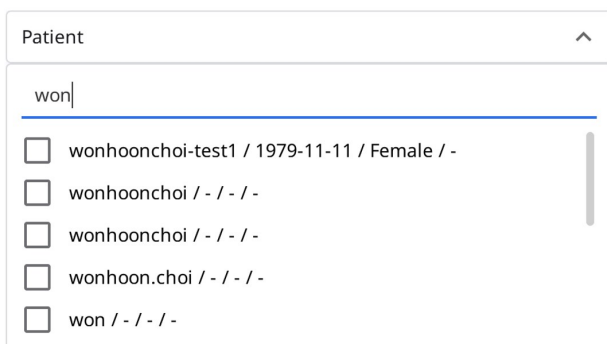

2. Vyberte pacienty z výsledků vyhledávání níže.

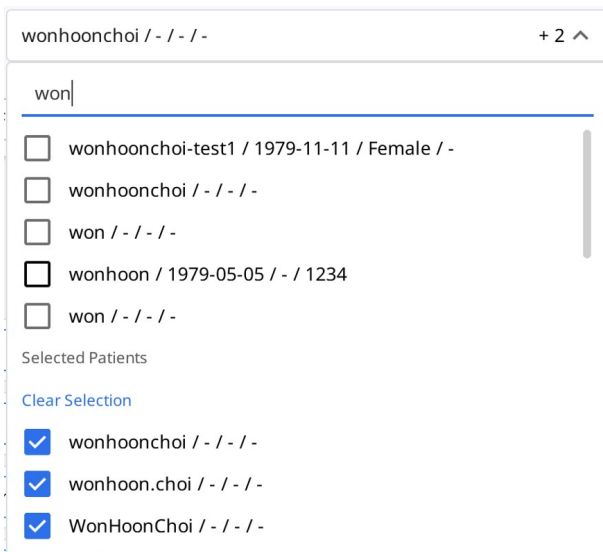

3. v seznamu jsou zobrazeny pouze případy vybraných pacientů.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2 v

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01~2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplcase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrovat podle data

Filtrujte a zobrazte případy, které byly naposledy upraveny během nastavené doby.

1. Klikněte na filtr doby.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Vyberte dobu trvání ze seznamu.

- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, naposledy upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené včera.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v předchozích 7 dnech, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v posledních 30 dnech, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Rozšířené možnosti vyhledávání

Využijte možnosti vyhledávání k rychlému nalezení požadovaných informací.

All Search / Contains

Pro každé pole jsou k dispozici následující Vyhledávání kritérií:

Patient	Vše, Jméno pacienta, ID pacienta
Case Box	Vše, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Informace formy, Název laboratoře
Order Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře, ID objednávky

In Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky
Work Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Informace formy, Název kliniky, ID objednávky
Case Talk	Název Case Talk (obsahuje), Jméno pacienta (rovná se)
Trash Box (Klinika)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název laboratoře, Smazáno kým
Trash Box (Laboratoř)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, Smazáno kým

Můžete vybrat Kritéria vyhledávání a vybrat si mezi logikou Obsahuje a Rovná se.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ

Vytváření případů

Vytvořte případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Zadejte základní informace, jako je jméno pacienta a název případu.
 - Pokud zadáte jméno, které není na seznamu pacientů, bude přidán nový pacient.
 - Pokud zadáte jméno, které je v seznamu pacientů, můžete jej vybrat ze seznamu.
 - Pokud registrujete případ pro existujícího pacienta, klikněte na ikonu Seznam pacientů a vyberte existujícího pacienta.



- V dialogovém okně Seznam pacientů můžete zaregistrovat nového pacienta nebo upravit informace o existujícím pacientovi.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worshoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	1111				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Stiskněte „Registrovat & Skenovat“ pro dokončení registrace případu a pokračujte ve skenování.

- **Registrovat:** Budete přesměrováni na hlavní stránku. Je to užitečné při registraci více případů.
- **Registrovat&Skenovat:** Přejděte na záložku Formulář a zaregistrujte informace formy pro daný případ.

Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Zadejte nebo vyberte název kliniky.
3. Zadejte jméno pacienta a název případu. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Zadejte očekávané datum dodání s ohledem na datum dokončení práce.
5. Po registraci případu budete přesměrováni na hlavní stránku.

Úprava případů

Upravit případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Klikněte na ikonu „Hledat“ a změňte jméno pacienta. Všimněte si, že jej nelze upravovat přímo; místo toho můžete najít jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího a upravit informace o pacientovi ze seznamu.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-09-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Zkontrolujte jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího pacienta.
4. Pro vytvoření nového pacienta stiskněte tlačítko „Nový pacient“.
5. Pomocí tlačítka "Upravit" můžete změnit registrované informace o pacientovi.
6. Klikněte „Použít“ pro dokončení procesu.

Upravit případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Po dokončení úprav stiskněte „Použít“.

Poznámka

Nemůžete upravovat informace o případech, přijatých prostřednictvím objednávky v In Box.

Klonování případů

Klonování případu v Case Box (Klinika)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Budete dotázáni, jaký druh informací byste chtěli naklonovat do nového případu.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Vyberte, zda chcete replikovat pouze informace formy nebo data všechna dohromady.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.

Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Duplikujte všechna data pro vytvoření nového případu.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.


Odstranění případu

Smazat případ (Klinika a Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Smazat“.



2. Kliknutím na „OK“ případ odstraníte.

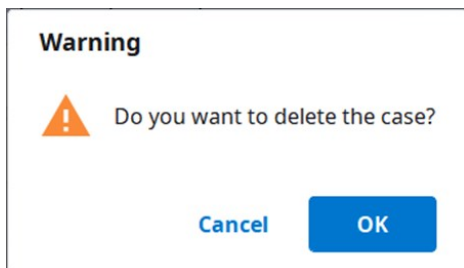

3. Odstraněné případy se přesunou do Trash Box a v případě potřeby je lze obnovit.

Informace formy

Informace formy můžete zadat na základě připojeného programu a typu léčby.

Zadané informace budou použity jako základní informace pro práci na skenování nebo CAD programech a objednávání.

Registrace informací formy v Case Box

Zadejte je na záložce Formy

1. Vyberte, zda chcete zadávat informace o léčbě podle zubů nebo podle oblouku.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
3. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Zadejte je na záložce CAD

1. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
2. Zvolte číslo zubu/oblouku/číslo matrice die.
3. Definujte nastavení pro detailní možnosti a operace CAD.
4. Klikněte na „OK“ pro uložení nastavení.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
5. Klikněte na „Uložit“ pro uložení vaší registrace

Registrace informací formy v Work Box

Zadejte je na záložce Formy

1. Vyberte skenovací program, který chcete použít.
2. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody se mohou lišit v závislosti na zvoleném skenovacím programu.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zuby	O	O
Oblouk	O	O
Flexibilní Multi-die	X	O
Multi-Die	X	O


4. Vyberte pro skenovací proces čísla zubů, oblouků nebo matric die.
5. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.
6. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Zadejte je na záložce CAD

1. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
2. Zvolte číslo zubu/oblouku/číslo matrice die.
3. Definujte nastavení pro detailní možnosti a operace CAD.
4. Klikněte na „OK“ pro uložení nastavení.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.
5. Klikněte na „Uložit“.

Připojení zubů do můstku

Když je stejný materiál aplikován na více sousedních zubů, můžete spojit více zubů do můstku. Kliknutím na ikonu můstku vedle vybraných zubů je spojíte nebo odpojíte.

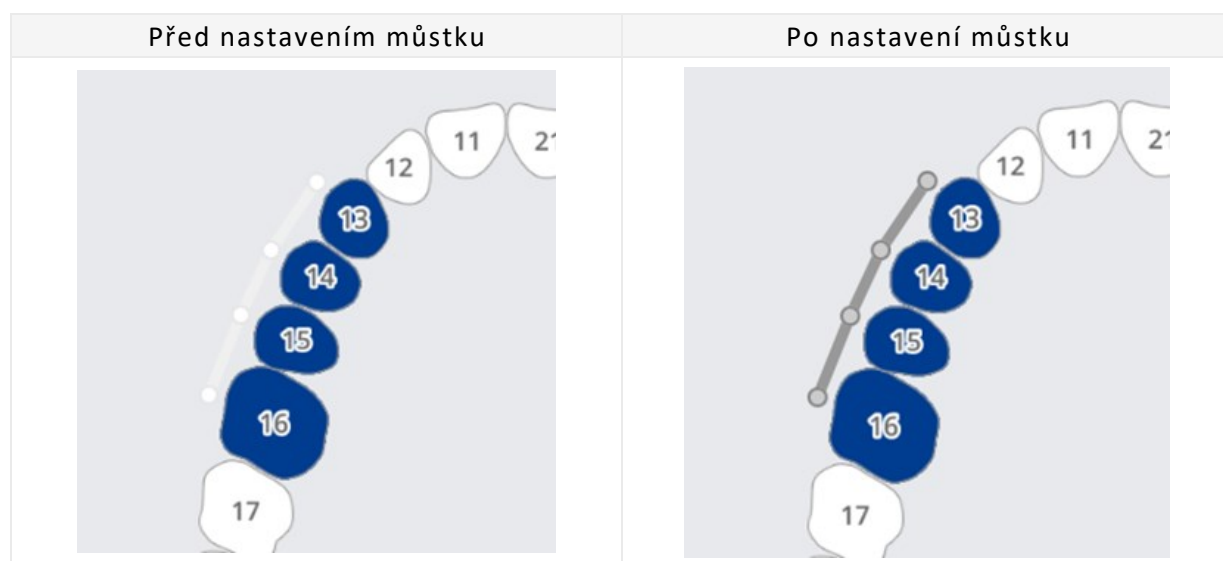

Nastavení možností skenování

V závislosti na programu, se kterým pracujete, jsou k dispozici různé možnosti skenování.

Vybrané možnosti skenování jsou obsahem každého skenovacího programu.

Medit Scan for Labs

Obecné možnosti

	Sousedící zub	Označte připravené a sousední zuby, předejte tyto informace skenovacímu programu.
	Antagonista	Automaticky označit antagonistu a předat tyto informace skenovacímu programu.
	Artikulátor	Zobrazovací možnosti pro výběr artikulátoru v skenovacím programu.
	Značka pohybu	Umožnit použít v skenovacím programu skenovací strategii „Pohyb čelisti“.

Možnosti podle zubů

	Skenování	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování samotné.
	Předoperační sken	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování předoperačního modelu.
	Wax-Up sken	Umožňuje nastavení strategie v programu skenování pro skenování wax-upu.

Přidání k Oblíbeným

Produkt můžete rychle vybrat tak, že jej zaregistrujete jako oblíbený.

Seznam registrovaných oblíbených položek je spravován jako šablona a lze jej sdílet prostřednictvím funkcí exportu a importu.

Přidat do Oblíbených

1. Zvolte číslo zubu.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Typ – Metoda – Materiál – Odstín lze zaregistrovat jako oblíbené, i když nejsou vybrány všechny z nich.
3. Klikněte na ikonu „Hvězdička“.

4. Kombinace vybraných parametrů, s výjimkou čísla zubu, je uvedena ve vašem vyhledávacím oblíbeném seznamu.

Spravujte oblíbené šablony

Můžete registrovat, spravovat a sdílet různé typy šablon.

Přidat	Přidat novou šablonu.
Přejmenovat	Přejmenovat aktuální šablonu.
Odstranit	Smazat aktuální šablonu.
Exportovat	Exportovat aktuální šablonu do souboru.
Importovat	Importovat soubor šablony.

Práce na skenování/CAD

Proces skenování

Na základě zadaných informací pokračujete ve skenování.

1. Zadejte/uložte informace o léčbě a vyberte potřebné možnosti skenování.
2. Klikněte na tlačítko „Skenovat“ v pravém horním rohu okna.

Proces CAD

Medit Link je integrován s exocad.

CAD	Registrace informací o léčbě	Potvrzení informací o léčbě	Přímé provádění v CAD	Import výsledků CAD zpět do Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. V Nastavení > Nastavit propojený program můžete propojit CAD program dle vašeho výběru ze seznamu.
2. Zadejte/uložte informace o úkolu a možnosti návrhu na záložce CAD.
3. Klikněte na tlačítko „CAD“ v pravém horním rohu okna.
4. Propojený CAD program se spustí a data se odešlou automaticky.
5. Uložte výsledky po provedení CAD.

Poznámka

Medit Link pro Mac nepodporuje funkci propojení s CAD.

Získání souborů s výsledky

Export souborů s výsledky skenování

Kromě sdílení výsledků s partnery prostřednictvím objednávek - Medit Link vám umožňuje ukládat vaše soubory s výsledky v požadovaném formátu souboru pomocí funkce exportu.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit soubory s výsledky.
Název složky	Systém vytvoří novou složku a uloží do ní všechny soubory s výsledky. Výchozí název složky je nastaven pravidlem pro pojmenování. Název složky však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat v Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název složky.
Název souboru	Nastavit název souboru pro výsledek. Pravidlo pojmenování nastavuje výchozí název souboru. Název souboru však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat pomocí Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název souboru
Typ CAD	Vyberte program CAD, který chcete použít pro váš návrhový program. Medit Link upraví soubory na základě tohoto výběru, což vám umožní pokračovat v návrhu bez jakéhokoli dalšího zarovnání os.
Mesh formát	Určit formát souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat soubory	Zkomprimovat všechny výsledky do jednoho souboru.


Kombinovat individuální struktury	Kombinovat výsledek maxilly nebo mandibuly s jednotlivými zuby. Užitečné, když není možné importovat do programu několik souborů.
Exportovat všechny okluzní vztahy	Když je z aplikace skenování vygenerováno více výsledků okluze, můžete exportovat všechny tyto výsledky okluze najednou.
Uložit Info o případu jako PDF	Uložte informace o případě jako pdf s výsledkem.

Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů


Soubory s výsledky jednoho případu nebo více případů můžete exportovat současně pomocí možnosti „Exportovat“ nad seznamem případů v Case Box a In Box.

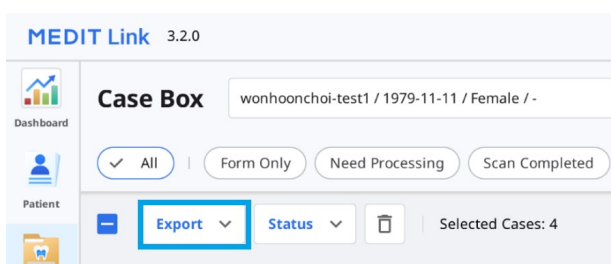

1. Přejděte do In Box nebo Work Box.
2. Vyberte ze seznamu všechny případy, pro které chcete exportovat soubory s výsledky.

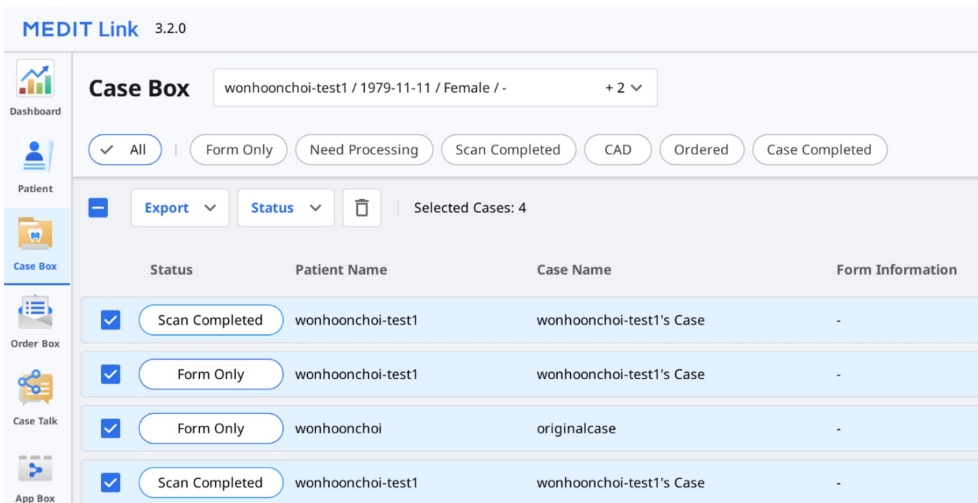

3. Klikněte na „Exportovat“ a vyberte „Soubory s výsledky“.

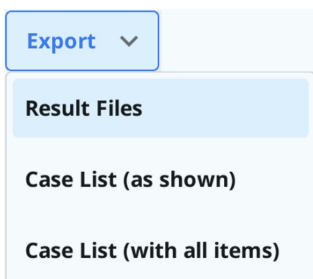

4. Nastavte cílovou složku, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

Poznámka

Pole „Název složky“ a „Název souboru“ nelze upravovat při exportu souborů pro více případů.

Název složky a název souboru se automaticky vytvoří podle pravidel, která jste nastavili pro „Pravidlo pro název složky“ a „Pravidlo pro název souboru“ v Nastavení > Možnosti exportu.

5. Klikněte na „Exportovat“.
6. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru

Soubory výsledků skenování pro konkrétní případ můžete exportovat pomocí ikony „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souboru.

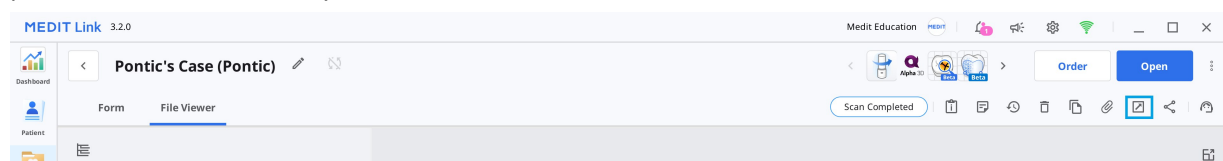

1. Přejděte do In Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souboru.



4. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát

obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

The screenshot shows the 'Export files in case' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'File List' tab is also visible. The 'Export Files To' field shows the path 'C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/'. The 'Folder Name' field contains 'Multi Occlusion - Scan - Before Scanning'. The 'File Name' field also contains 'Multi Occlusion - Scan - Before Scanning'. The 'CAD Type' dropdown is set to 'Maestro'. Under 'Mesh Format', the 'Convert mesh files to the below formats' section has checkboxes for 'meditMesh', 'OBJ', 'PLY' (checked), and 'STL'. Below this, the 'Do not convert the attached files' checkbox is also checked. The 'Image Format' section has a checkbox for 'Convert images to the below format' which is unchecked. Below it are radio buttons for 'JPG', 'JPEG', 'PNG' (selected), and 'BMP'. At the bottom, there are checkboxes for 'Compress Files', 'Combine Individual Mesh', 'Export All Occlusal Relationship', and 'Save Case Information as PDF' (with a 'Preview' link). 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.

5. Na kartě „Seznam souborů“ můžete vybrat požadované soubory pro případ zrušením výběru nepotřebných.


The screenshot shows the 'Export Files in This Case' dialog box with the 'File List' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'File List' contains a tree view of files and folders. The root folder is checked. Under it, 'Maxilla' and 'Mandible' are checked, each with a sub-folder 'Base' also checked. 'Occlusion' is checked, with sub-folders 'First Occlusion' and 'Second Occlusion' also checked. 'Dynamic Occlusion' is checked, with a sub-folder 'Free' also checked. 'Free' has sub-folders 'Maxilla' and 'Mandible' also checked. 'Face Scan Data' is checked, with a sub-folder 'Face Scan Data' also checked. 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.

6. Klikněte na „Exportovat“.
7. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Question'. It contains a question mark icon and the text 'Exporting successfully completed. Do you want to open the folder containing the exported file?'. At the bottom, there are 'No' and 'Yes' buttons.

Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu


Z rozbaleného menu v prohlížeči souborů můžete exportovat soubor nebo soubory v konkrétní skupině dat.

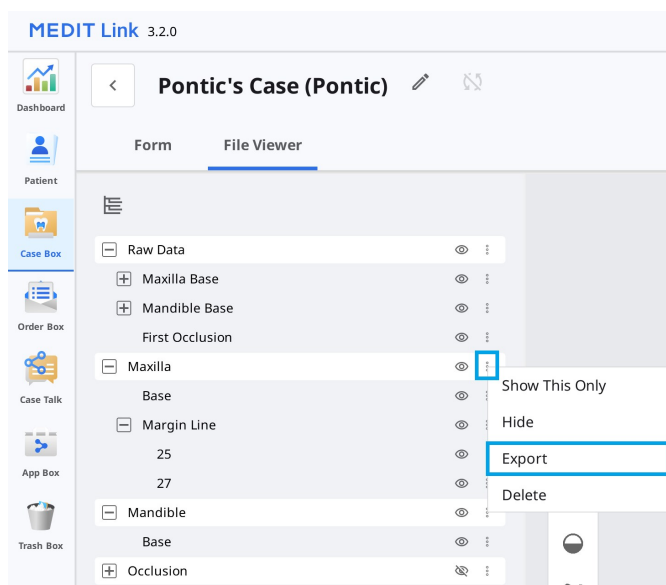

1. Přejděte do In Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu tří teček vedle skupiny dat nebo entity v datovém stromu na kartě Prohlížeč souborů.

...

4. Poté klikněte na „Exportovat“.

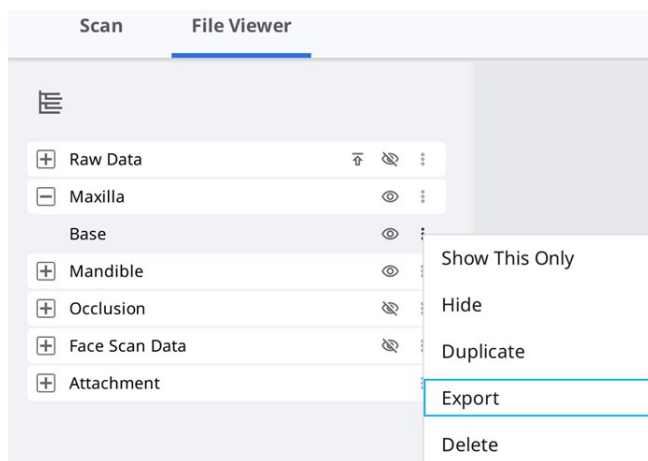

5. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Můžete vidět pouze soubory, které jste vybrali v datovém stromu, ty jsou vybrány v Seznamu souborů.

Export Files in This Case

Options **File List**

☒ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Klikněte na „Exportovat“.
8. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Exportovat Seznam případů jako CSV


Medit Link poskytuje funkci pro export seznamu případů ve formátu CSV.

Můžete exportovat seznam případů se základními informacemi a následně snadno spravovat případy.

1. Přejděte do In Box nebo Work Box.
2. Vyberte případy, které chcete exportovat.

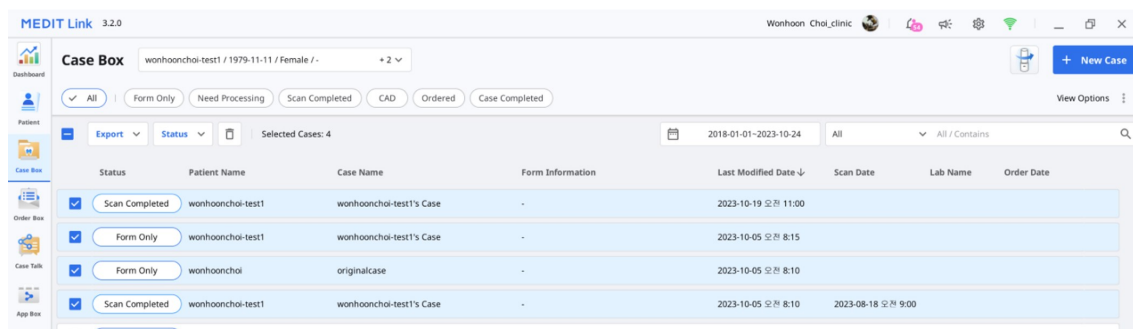

3. Klikněte na „Exportovat“ a vyberte „Seznam případů (jak je zobrazen)“ nebo „Seznam případů (se všemi položkami)“.

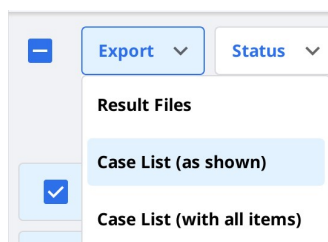

Poznámka

Seznam případů (jak je zobrazen): Exportujte seznam případů s aktuálně zobrazenými položkami na obrazovce. Přejděte na Možnosti zobrazení > Položky tabulky pro zobrazení nebo skrytí položek, jak si přejete.

Seznam případů (se všemi položkami): Exportujte seznam případů se všemi položkami, včetně stavu, názvu případu, data narození, informací formy, data poslední úpravy, data skenování, data objednávky a názvu laboratoře.

4. Definujte cestu a název souboru, poté seznam uložte.
5. Seznam případů se uloží jako CSV soubor.

Export hranice preparace


Medit Scan for Clinics poskytuje funkci pro vytvoření hranice preparace a Medit Link může přenést hranici preparace do CAD programu.

Exportovat hranici preparace jako barvu

Obecně platí, že Medit Link překonvertuje hranici preparace jako barvu a exportuje výsledek společně s maxillou nebo mandibulou. V CADu můžete vytvořit hranici preparace, odkazující na informace o barvě.

Příklad:

Maxilla

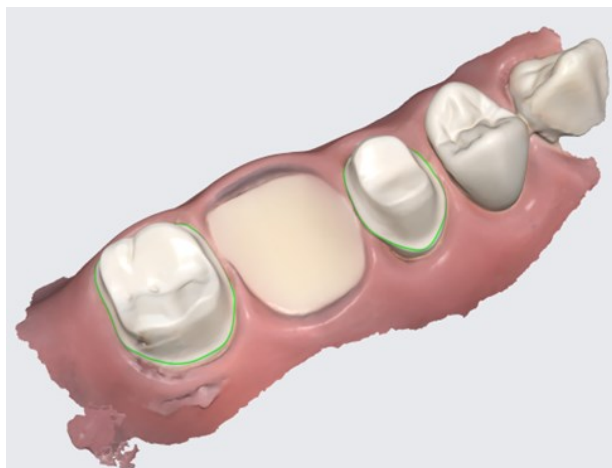

Výsledek s hranicí preparace jako informace o barvě

Poznámka

Tato funkce je dostupná pro formáty, které obsahují informace o barvě, jako je meditMesh, OBJ, PLY. Hranice preparace se nepřevádí na STL.

Poznámka



Typ CAD >3shape nepodporuje tuto funkci.

Exportovat hranici preparace jako soubor

V případě exocadu Medit Link exportuje hranici preparace do „~margin.xyz“, který lze importovat přímo do exocad.

Tento soubor můžete použít v exocadu bez dalšího zpracování.

Příklad:

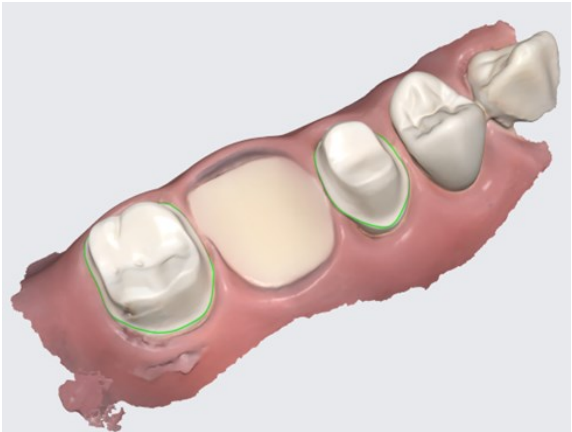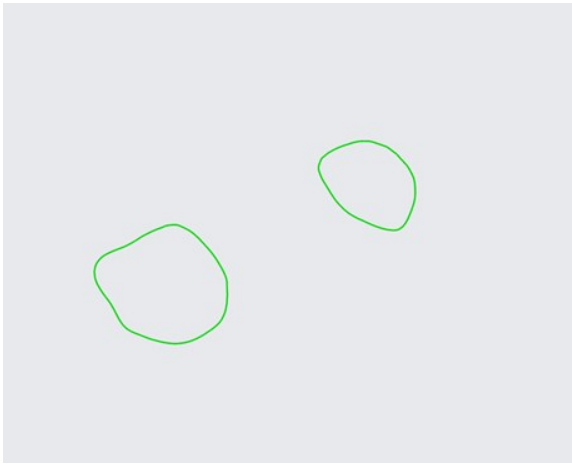Maxilla	Hranice preparace
 Výsledek s hranicí preparace jako informace o barvě	 Hranice preparace exportovaná jako jednotlivé soubory

Stáhnout soubory z webstránky Medit Link

Medit Link poskytuje funkci stahování.

 Poznámka

Ke stažení souborů z webu by data měla být nahrána na Medit Cloud.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Tlačítko „Stáhnout“ najdete vpravo nahoře.



108

Pokud zaškrtnete políčko „Udělit oprávnění ke stažení“ a sdělíte případ, mohou si soubory stáhnout všichni uživatelé, kteří se připojí ke sdílenému odkazu.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Ve Web Viewer najdete ikonu „Stáhnout“ vpravo nahoře.

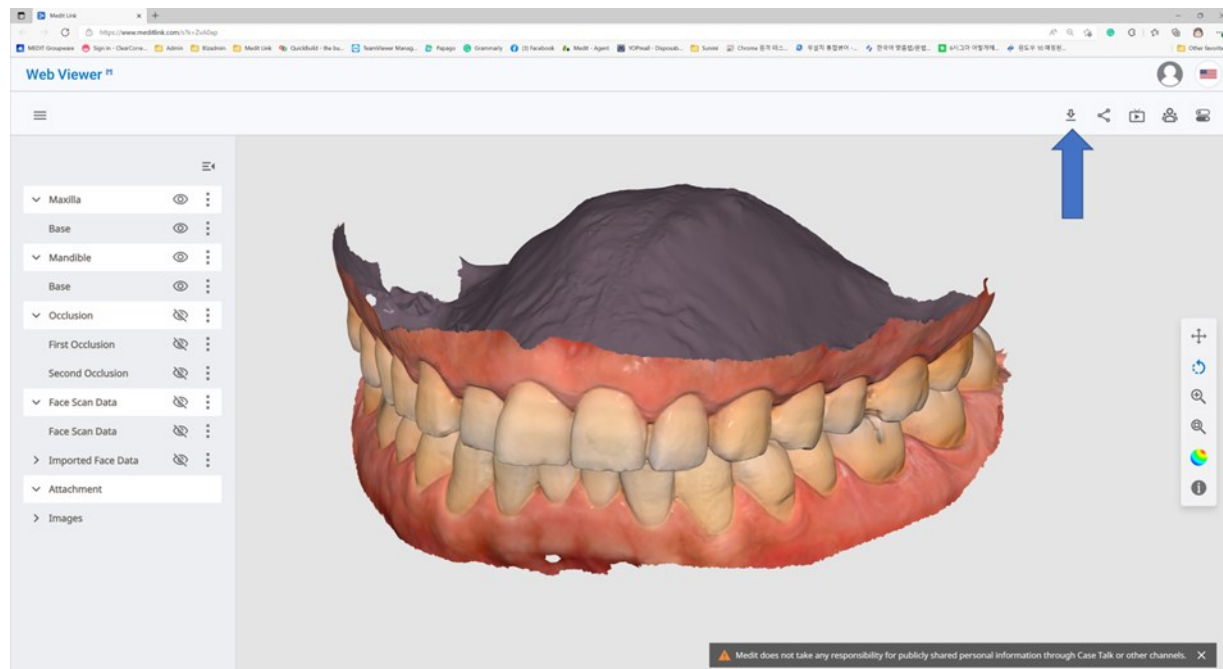

1. Klikněte na „Stáhnout“.



2. Vyberte mesh formát sítě z dialogového okna stahování.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) [OK](#)

3. Poté klikněte na „OK“.

Objednávka/Správa objednávek

Snadno si můžete objednat případ s daty získanými z připojených programů a připojenými uživatelem.

Objednávání případů

Objednávku pro své partnery můžete zadat v Case Box.

1. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
2. Zkontrolujte informace požadované pro vaši objednávku.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
8:15 AM

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Zvolte partnera.
4. Zkontrolujte informace o produktu na záložce Seznam objednávek.
 - Můžete se rozhodnout, zda chcete sdílet jméno pacienta.
5. Zkontrolujte soubory k objednání na kartě Seznam souborů.
6. Zadejte požadované datum doručení.
 - Výchozí hodnota je nastavena na 7 dní od data objednávky.
7. K vašemu partnerovi můžete přidat poznámku a připomínku pro konkrétní podrobnosti.
8. Když se z aplikace skenování vygeneruje více výsledků okluze, můžete odeslat všechny výsledky okluze najednou zaškrtnutím možnosti „Objednat všechny okluzní vztahy“.
9. Pokračujte v objednávce.

Potvrdit objednávku (In Box)

- Přijměte objednávku po jejím obdržení.
- Přijaté objednávky budou předány do Work Box.

Zrušit objednávku (Order Box)

- Objednávku můžete zrušit dříve, než ji váš partner přijme.
- Zrušené případy lze objednat znovu.

Odmítnout objednávku (In Box)

- Přijatou objednávku můžete odmítnout.
- Odmítnuté případy lze objednat znovu.

Kontrola objednaných případů

Detaily o objednaném případě můžete zkontrolovat v Order Box v účtu kliniky. Můžete také zkontrolovat obdržený případ v In Box v účtu laboratoře.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade


Info o objednávce	Informace, které lze zahrnout do objednávky, jsou následující: ID objednávky/jméno pacienta/název účtu/datum skenování/datum objednávky/datum doručení/datum doručení/poznámka. Můžete zkontrolovat detaily o objednaném produktu a informace o dodání.
Seznam objednávek	Seznam objednávek zobrazuje detaily o objednaném produktu.
Odeslání	Zadejte/zkontrolujte informace o odeslání.

Zadání informací o doručení (In Box)

Zadejte informace o doručení pro dokončený případ a začněte odesílat.

1. Klikněte na záložku „Doručení“.

2. Zadejte informace o zásilce a klikněte na „Registrovat“.

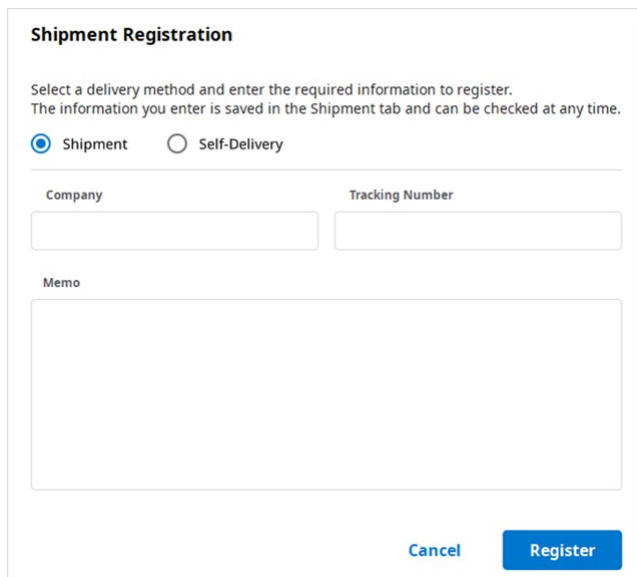

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Zadané informace budou odeslány vašemu partnerovi.

Správa data doručení

Při zadávání objednávky můžete nastavit předpokládaný termín dodání a tato informace bude předána vašemu partnerovi.

Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)

- Při objednávce z Case Box můžete zadat požadované datum dodání.

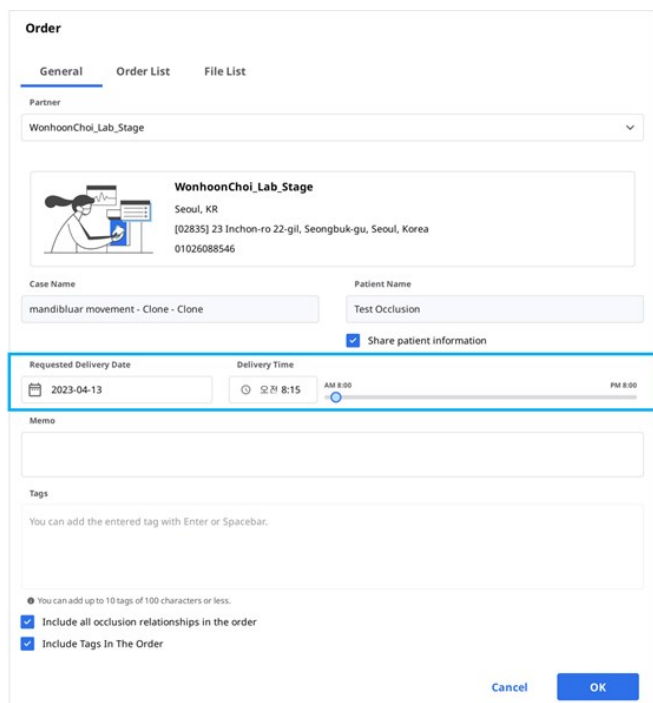

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Výchozí hodnota je 7 dní od data objednávky.
- Zadejte datum/čas, kdy chcete produkty obdržet a pokračujte v objednávce.
- Čas můžete snadno nastavit pomocí posuvníku.

Nastavit očekávané datum doručení (Účet kliniky)

- Můžete zadat očekávané datum doručení pro případ, objednaný z In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 오전 7:56 Order Date: 2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01

오전 10:30 오전 10:30

Memo

<Scanbody Library>
 16 : ODENTIS_Custom_NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
 15 : ODENTIS_Custom_NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
 14 : ODENTIS_Custom_NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Ověřte si u partnera požadovaný termín dodání a přeplánujte jej pomocí tlačítka „Upravit“.



2. Zadejte očekávané datum doručení s ohledem na aktuální pracovní den. V případě potřeby můžete také zanechat komentář.
3. Klikněte na „Použít“.

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Předpokládaný termín dodání a připomínka budou zaslány společně s objednávkou.
 - Datum a připomínky můžete zkontrolovat v Order Box.
 - Předpokládané datum doručení můžete změnit a tyto změny budou předány vašemu partnerovi.
5. Historii případů můžete zkontrolovat pomocí tlačítka „Historie“.



Dokončování případu

Dokončit (Work Box/In Box)


Po dokončení všech úkolů dokončete práci na případě kliknutím na tlačítko „Done“.

Dokončete případ z detailu případu

Ikonu tří teček najdete vpravo od tlačítka „Otevřít“ nebo „Skenovat znovu“.



Dokončete práci kliknutím na ikonu a výběrem „Done“.

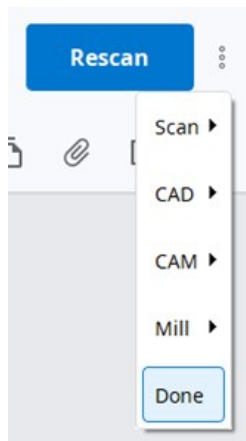

Dokončit více případů ze seznamu případů

1. Přejděte do Work Box.
2. Vyberte všechny případy k dokončení.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
☒ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
☒ Form Only	test's Case	test	-
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Klikněte na „Stav“ a vyberte „Done“.

Dokončit (Case Box/Order Box)

Po dokončení případu na straně laboratoře musí klinika případ potvrdit pro kompletizaci celého případu objednávky.

Pokud laboratoř dokončí svou práci, může klinika najít tlačítko „Potvrdit doručení“ v poli Order Box.


Kliknutím na toto tlačítko se celý proces objednávky dokončí a stav případu se změní na „Case Completed“.

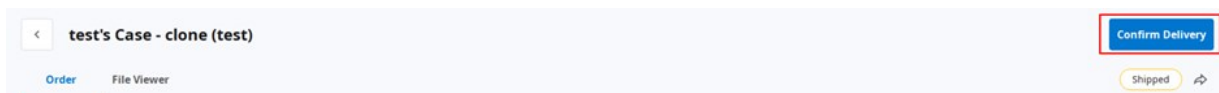

Dokončete neobjednaný případ v Case Box

U případů, které nejsou objednány do Laboratoře, můžete tyto případy skompletizovat z Case Box.

1. Přejít do Case Box.
2. Vyberte případ, který chcete skompletizovat.

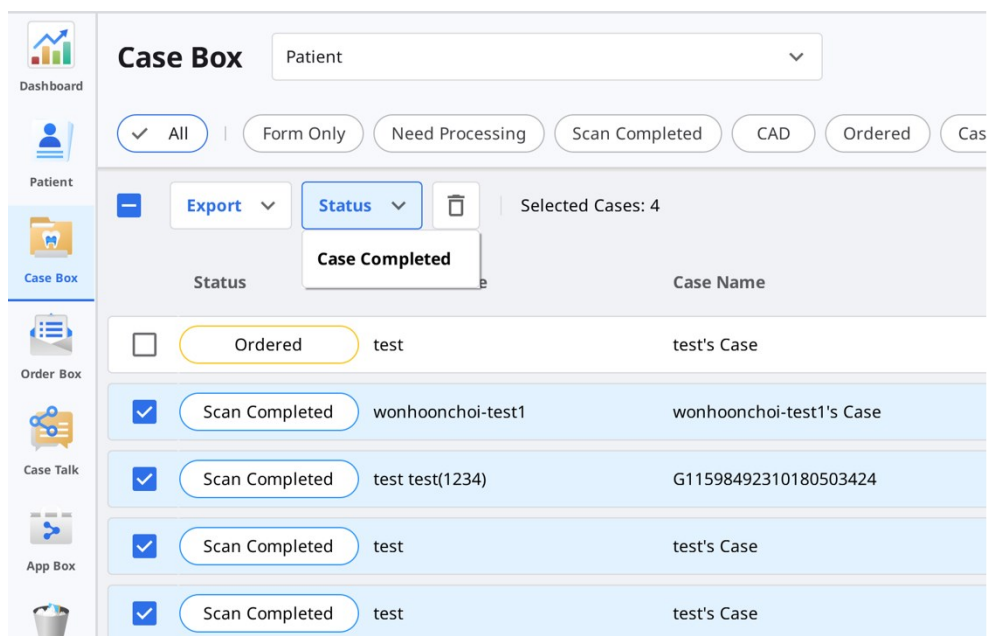


3. Klikněte na „Stav“ a vyberte „Case Completed“.

Komunikujte pomocí značek

Pomocí značek můžete přidat další informace pro váš případ a odeslat je svým partnerům.

Přidejte značky při vytváření nového případu

Při vytváření nového případu nebo úpravě informací o případě můžete zadat značky.

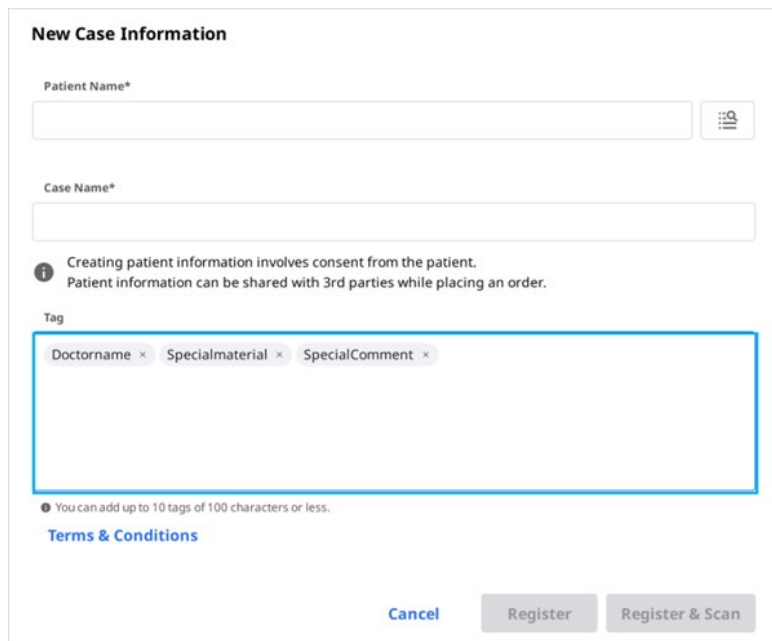

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Můžete snadno vyhledávat a vybírat značky, které jste použili dříve.

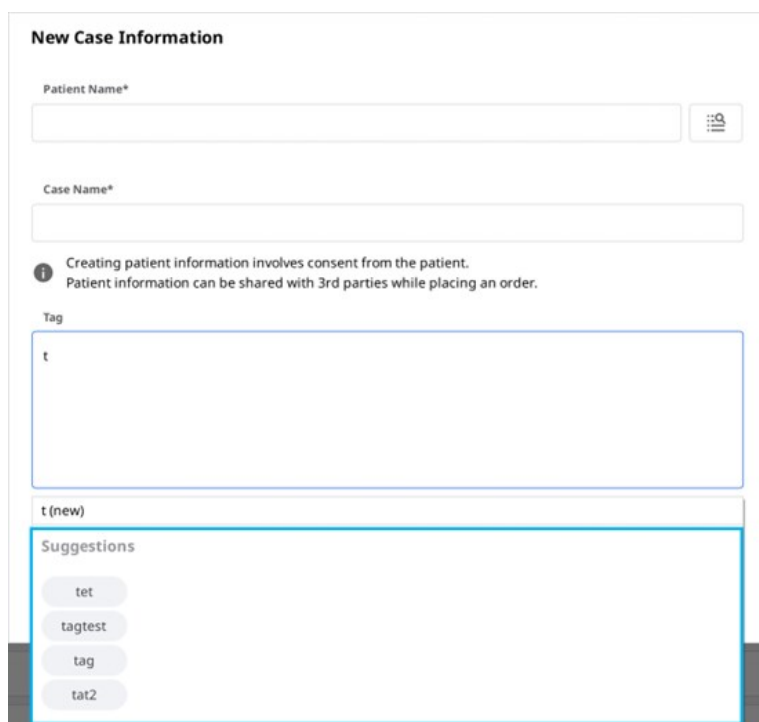

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Přidejte značky při objednávce

Značky můžete kontrolovat a upravovat v dialogu Objednávka při objednávání.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오후 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Zkontrolujte značky na detailech případu

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Form File Viewer

Case Box

- Raw Data
- Maxilla
- Base
- Mandible
- Base
- Occlusion

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z

