

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

はじめに	6
Medit Link	6
サービス概要	6
クラウドサービス	7
注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム	7

Medit Link > インストール

システム要件	8
Windows用のシステム要件	8
macOS用システム要件	8
Webサービス用システム要件	8
推奨ブラウザ	8
モバイル機器用最小要件	8
Windowsへのインストール	9
MacOSへのインストール	11

Medit Link > 開始する

登録 & サインイン	15
Medit Link Webサイト	15
登録	15
ログインおよびウェルカムページ	17



Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	19
Dashboardの概要	19
Medit Insights	19
Medit Insightsを購読する	20
Medit Insightsの購読を解除する	21
Patient	22
患者の検索	22
Case Box/Work Box	23
ケースフィルタリング	23
患者別フィルタリング	23
ステータス別フィルタリング	24
期間別フィルタリング	25
検索別フィルタリング	25
ケースの詳細	25
Order Box/In Box	27
注文詳細	27
Order Box/In Box中のタブ	27
Case Talk	28
Case Talkの作成	28
共有権限タイプと共有オプションの設定	29
Case Talk詳細	30
Webビューワー	31
注釈	32
コメント	33
リアルタイムでの画面共有	33
データツリー	33

データツリーコントロール	
3D模型のコントロール	34
Partners	35
パートナーを検索する	35
マイ契約リスト	35
パートナーの招待	36
Membership	37
メンバーシップ	37
マイプラン	38
クラウドストレージ	38
サブスクリプション登録	39
登録を解除する	40
請求情報	42
支払い方法の追加方法	42
支払い方法の変更方法	43
引き換え	44
引換コードの登録	44
引換コードの有効化	45
My Info	46
マイアカウント	46
マイ歯科医院／マイ技工所（管理者アカウントのみ）	46
マイ・スキャナー	47
その他のメニュー	48
お知らせ＆更新情報	48
Medit情報	48
Medit Linkアプリのダウンロード	48

Medit Link > Medit Linkアプリ

概要	50
下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。	50
タイトルバー	51
ユーザー情報	51
通知	51
お知らせ＆更新情報	52
設定	52
ネットワークステータス	53
設定	55
一般	55
ストレージ管理	56
期間の設定	56
ローカルストレージ	56
クラウドストレージ	56
接続プログラムを設定する	57
エクスポートオプション	57
ケース変換ツール	59
ケースのエクスポート	59
ケースのインポート	60
プロキシオプション	62
弊社について	62
ユーザーガイド	62
メニュー	63
Dashborad	63
Patient	63
新規患者の追加	64
患者の削除	64

患者の結合	
Case Box/Work Box	65
Case Box／Work Box中のタブ	65
Case Box／Work Box中のタブ	66
Order Box/In Box	67
Order Box/In Box中のタブ	67
Case Talk	68
App Box	68
Trash Box	69
ケース同期マネージャー	69
アップロード	70
ダウンロード	70
Medit情報	71
ファイルビューアー	72
データツリー	72
模型コントロールツール	72
3D模型のコントロール	72
2D画像コントロール	73
機能ツール	73
画像撮影とメモ	74
矯正撮影	74
歯牙充填	75
トリミング	75
咬合アライメントの最適化	78
下顎運動	79
ファイルビューアーの複数の咬合データの管理	80
複数の結果の管理方法	80
表示オプション	82
ステータスフィルター	82
表示タイプ	83
グループ化	83
並び替え	83
フィルタリングおよび検索	85
患者別フィルタリング	85
日付別フィルタリング	86
詳細検索機能	86

Medit Link > ワークフロー

ケースの作成／編集／複製／削除	88
ケースの作成	88
Case Box(歯科医院)でケースの作成	88
Work Box(技工所)でケースの作成	89
ケースの編集	89
Case Box(歯科医院)でケースの編集	89
Work Box(技工所)でケースの編集	90
ケースの複製	90
Case Box(歯科医院)でケースの複製	91
Work Box(技工所)でケースの複製	91
ケースの削除	91
ケースの削除(歯科医院および技工所)	91
フォーム情報	92
Case Boxのフォーム情報の登録	92
フォームタブの入力	92
CADタブの入力	92
Work Boxのフォーム情報の登録	92
	92

フォームタブの入力	
CADタブの入力	92
歯をブリッジにつなぐ	93
スキャンオプションの設定	93
Medit Scan for Labs	93
一般オプション	93
歯別のオプション	93
お気に入り追加	94
お気に入り追加	94
お気に入りテンプレートの管理	94
スキャン/CADでの作業	95
スキャン処理	95
CAD処理	95
結果ファイルの取得	96
スキャン結果ファイルのエクスポート	96
ケースリストから結果ファイルのエクスポート	97
ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート	98
データツリーから結果ファイルのエクスポート	100
CSVとしてケースリストのエクスポート	102
マージラインのエクスポート	102
色としてマージラインのエクスポート	102
ファイルとしてマージラインのエクスポート	103
Medit Linkウェブからファイルをダウンロード	103
Case Box/Work Box	104
Webビューワー	104
ケースの注文/管理	107
ケースの注文	107
注文の確認 (In Box)	107
注文のキャンセル (Order Box)	108
注文の拒否 (In Box)	108
注文済みケースの確認	108
配送情報の入力 (In Box)	108
納品日の管理	109
納品希望日の設定 (歯科医院アカウント)	109
ケースの完了	110
完了 (Work Box/In Box)	110
ケースの詳細からケースを完了する	111
ケースリストから複数のケースを完了する	111
完了 (Case Box/Order Box)	111
Case Boxの注文のないケースの完了	112
タグを使用してやり取りをする	113
新規ケースの作成時にタグを追加	113
注文時にタグを追加	113
ケースの詳細でタグを確認	114

はじめに

Medit Link

Medit Linkは歯科医院と技工所の各ワークフローを最適化できるように、両者間のやり取りを円滑にするよう設計されているコラボレーションツールです。

各アカウントのタイプや権限に基づき、差別化された機能を提供しています。プログラムは口腔内および模型のスキャナーでのスキャン、ケースの注文、補綴物の設計・製作のワークフローを管理するためのユーザーが使いやすいユーザーインターフェースを提供しています。

Medit Linkは、ウェブサービスおよびコンピューターアプリケーションで構成されています。

サービス概要

		Web	アプリ
		• アカウントの登録と管理 • 検索 • パートナーの検索と管理 • 共有リンクを使ってWeb Viewer経由でケースを共有 • アプリから作成されたケースにアクセス • 注文管理	• フォーム情報の入力 • スキャン • 注文管理 • CADにリンク • 患者管理
歯科医院	管理者	パートナーと歯科医院を検索・管理し、ケースを共有します。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	フォーム情報の入力、スキャン、CADとリンク、発注、患者の管理。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	メンバー	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box
技工所	管理者	パートナーと技工所を検索・管理し、ケースを共有。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	フォーム情報の入力、スキャン、CADとリンク、注文の管理。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

メン バー	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
----------	--	---

クラウドサービス

Medit Linkは、AWS (Amazon Web Services)を介してデータベースとファイルの自動アップロード/ダウンロードをサポートしています。

クラウドに保存されたデータは、歯科医院／技工所の複数のユーザーのコンピューターに自動的に同期されていますので、いつでもどのコンピューターからでも同じデータにアクセスできます。クラウドベースのバックアップとリカバリーですべてのデータを安全に維持します。予期せぬコンピュータの停止によるデータ喪失の場合でも、データを安全に保護できます。

クラウドサービスによりパートナー提携している歯科医院および技工所はメールしたり、手動でスキャン転送することなく、迅速にデータを共有できます。患者情報などすべてのデータは、安全に暗号化され保存・転送されます。MeditはHIPAAやGDPRのような医療関連法令や規制に準拠しています。

注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム

Medit Linkは注文システムを提供しています。

- Medit Linkを使用すると、歯科医と歯科技工所間での連携を構築でき、素早く簡単にデータを共有できます。
- 注文状況を確認および管理できます。

システム要件

🔍 注意

スキャナーを使用してスキャンソフトウェアを使用する場合には、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのシステム要件を参照してください。

Windows用のシステム要件

	ノートパソコン&デスクトップ
CPU	Intel Core i5 2.6GHz以降
RAM	16GB以上
グラフィック	NVIDIA GeForce GTX 769 (2GB) 以上／または同等のAMD動画カード
OS	Windows 10 64ビット以上 (32ビットでは使用不可)

macOS用システム要件

	Mac
プロセッサ	M1チップ (8コア、7コア GPU、16コアニューラルエンジン)
RAM	16GB以上
OS	Monterey 12

Webサービス用システム要件

推奨ブラウザ

	ブラウザ
PC	Chrome、Firefox、Safari、Edge (Chromium)
Android	Chrome、Firefox
iOS	Safari、Chrome、Firefox


モバイル機器用最小要件

	Android	iOS
デバイス	Galaxy S7以降	iPhone 7以降
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB以上	2GB以上
AP	Snapdragon 710より上	A10 Fusion


Windowsへのインストール

Medit Linkは、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのスキャン取得プログラムと一緒にパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_LinkSetup.exe.を実行します。
2. インストールする言語を選択します。
3. Medit Linkをインストールするフォルダを選択します。ライセンスの利用規約を読み、同意し「インストール」をクリックしてください。

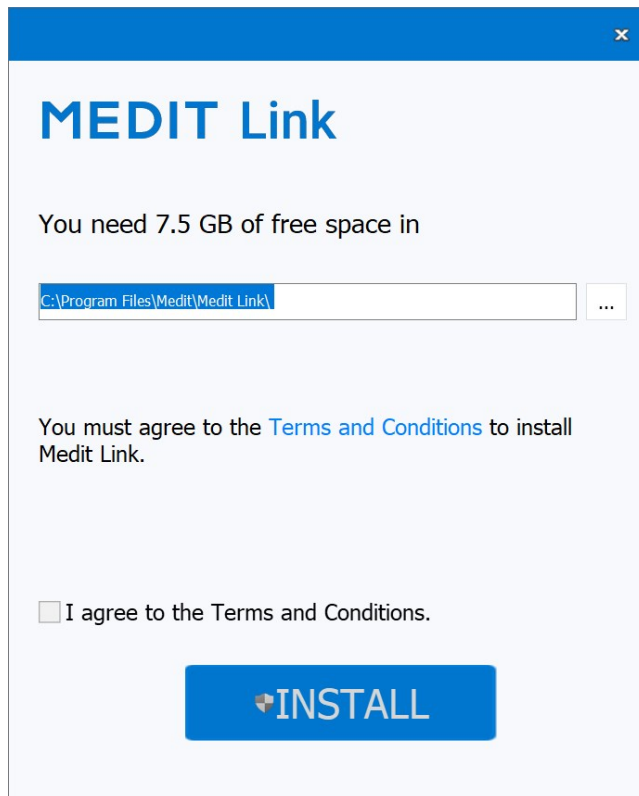

4. 次の手順に進む前に、スキャナーケーブルがPCに接続されていないことを確認してください。スキャナーがPCに接続されている場合には、インストールは継続できません。
5. プログラムは自動的にインストールされます。しばらく時間がかかる場合があります。インストールが完了するまでPCの電源を落としたり、コードを抜いたりしないでください。

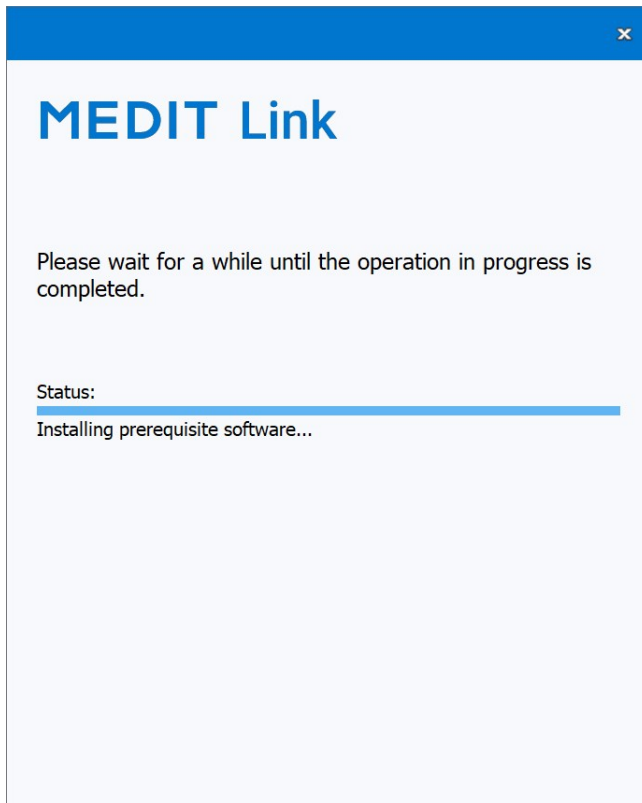

6. インストールが完了したらPCを再起動してください。スキャナーがない場合には、PCを再起動することなくそのまま継続できます。

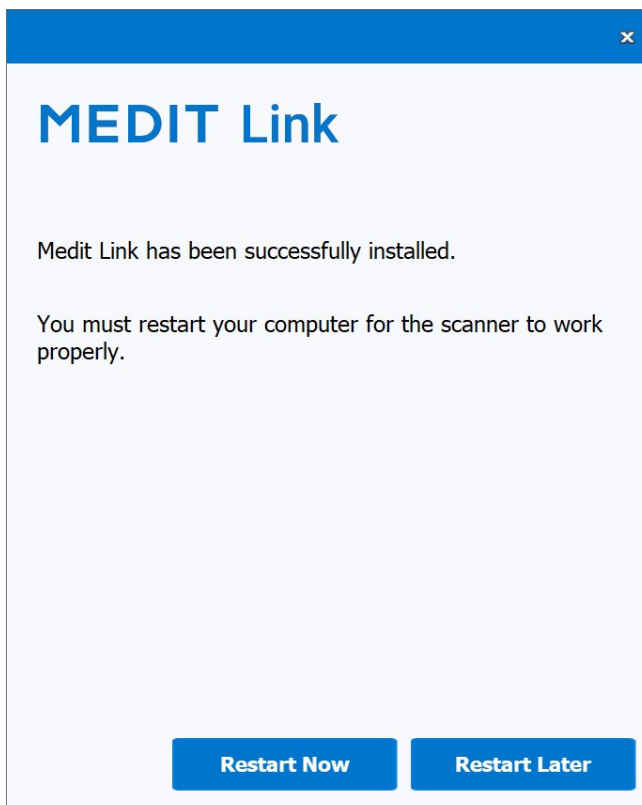


注意

インストール完了後にPCを再起動しない場合、スキャナーは正常に機能しない場合があります。


MacOSへのインストール

Medit LinkはMedit Scan for Clinicsのパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_Link_x.x.x.pkgを実行し、「続ける」をクリックします。

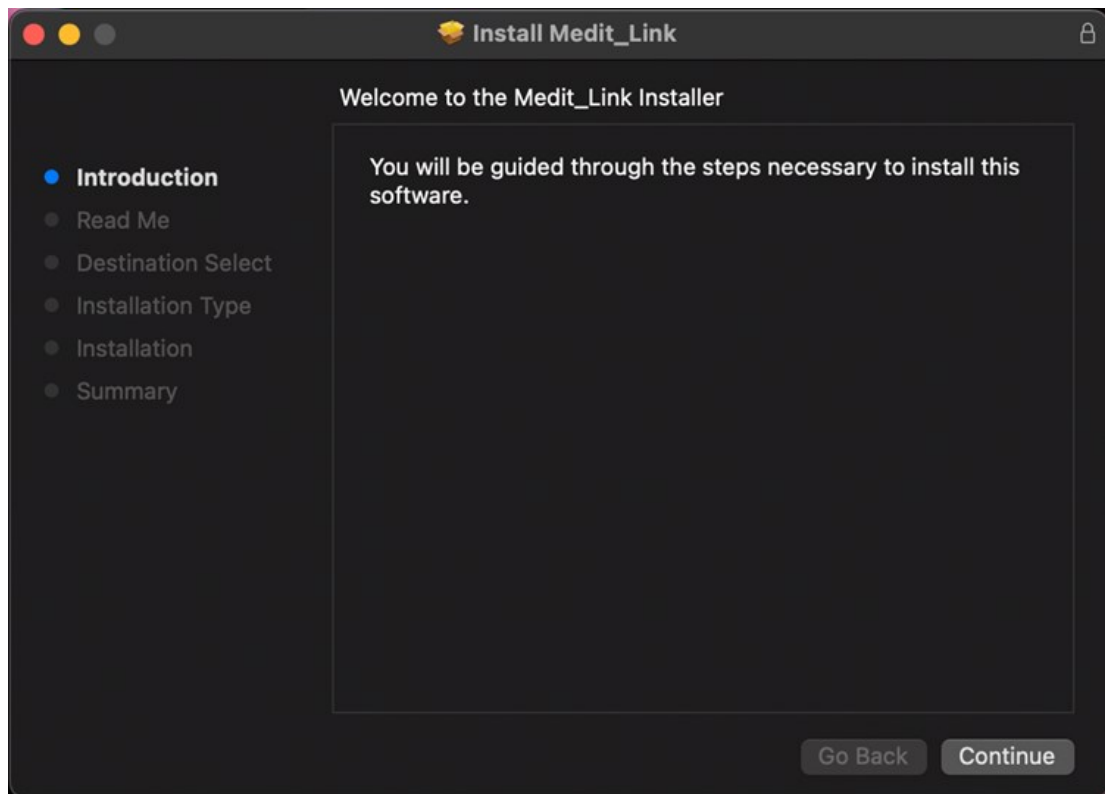


2. エンドユーザーライセンス契約を読み、「続ける」をクリックします。

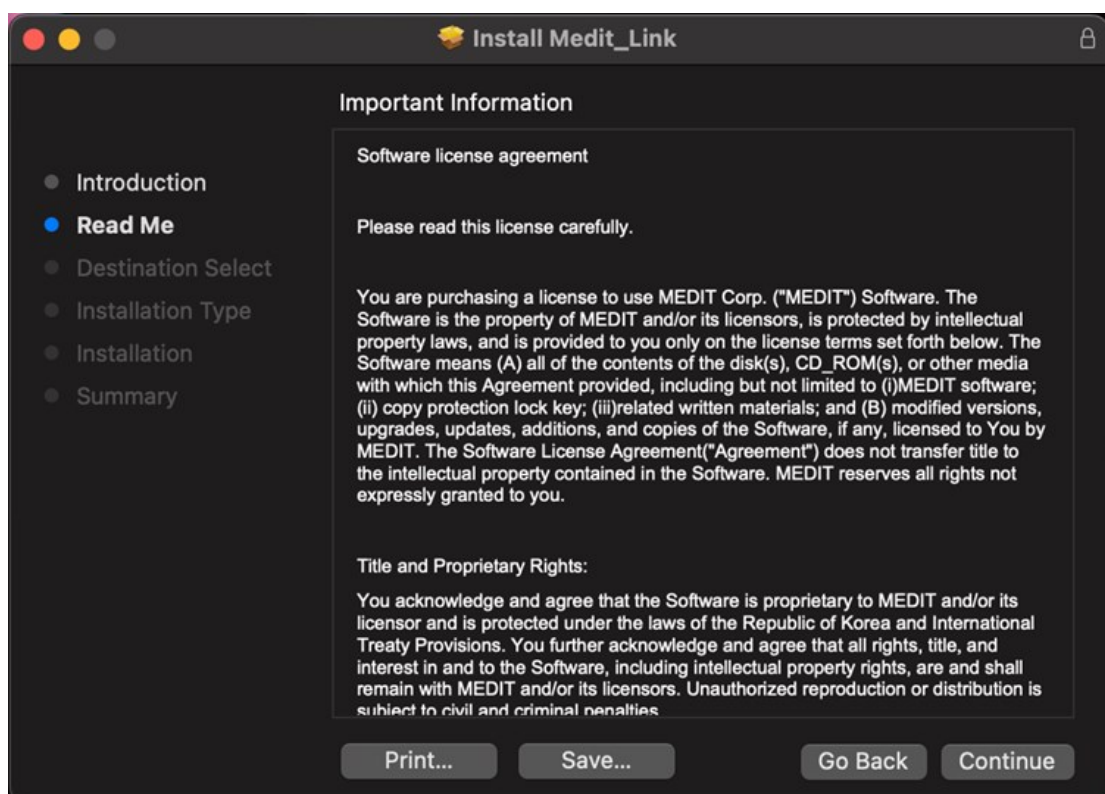

3. インストールするディスクを選択し、「続ける」をクリックします。

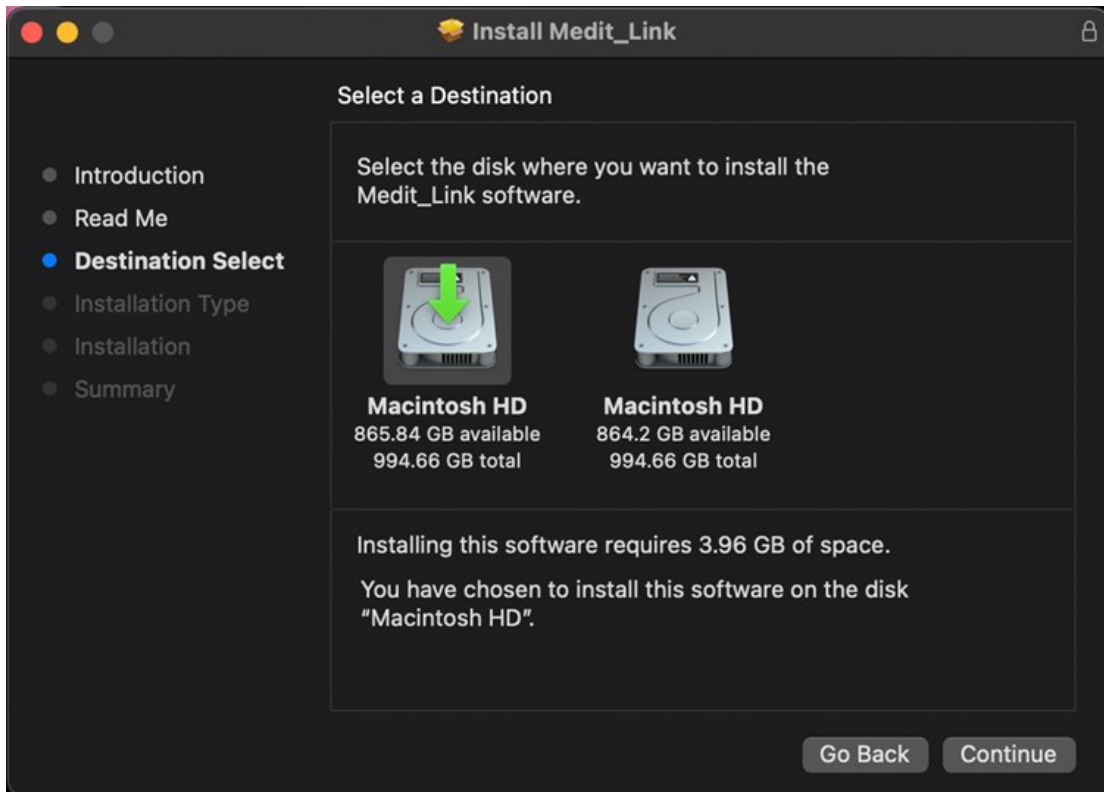


4. 「インストール場所の変更」をクリックし、インストール場所を変更します。

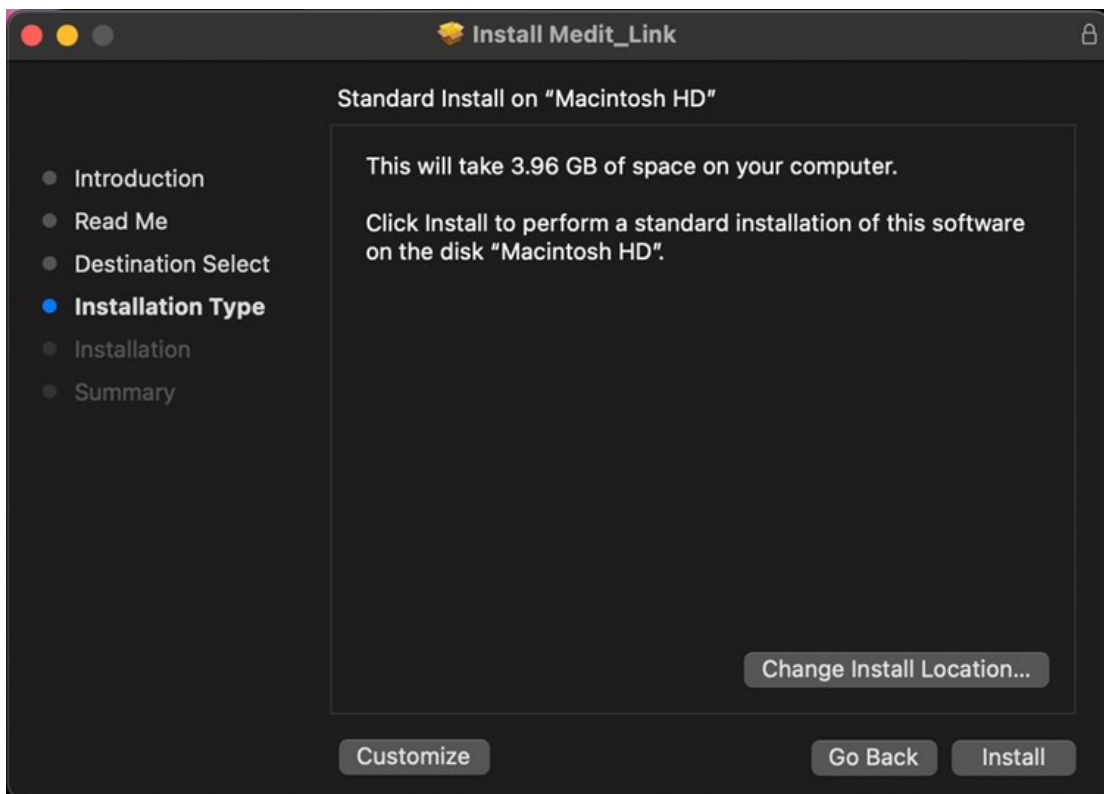


5. 「インストール」をクリックし、要求された場合にはインストールを許可するためにMac用パスワードを入力します。



6. インストールが完了するまで待ちます。

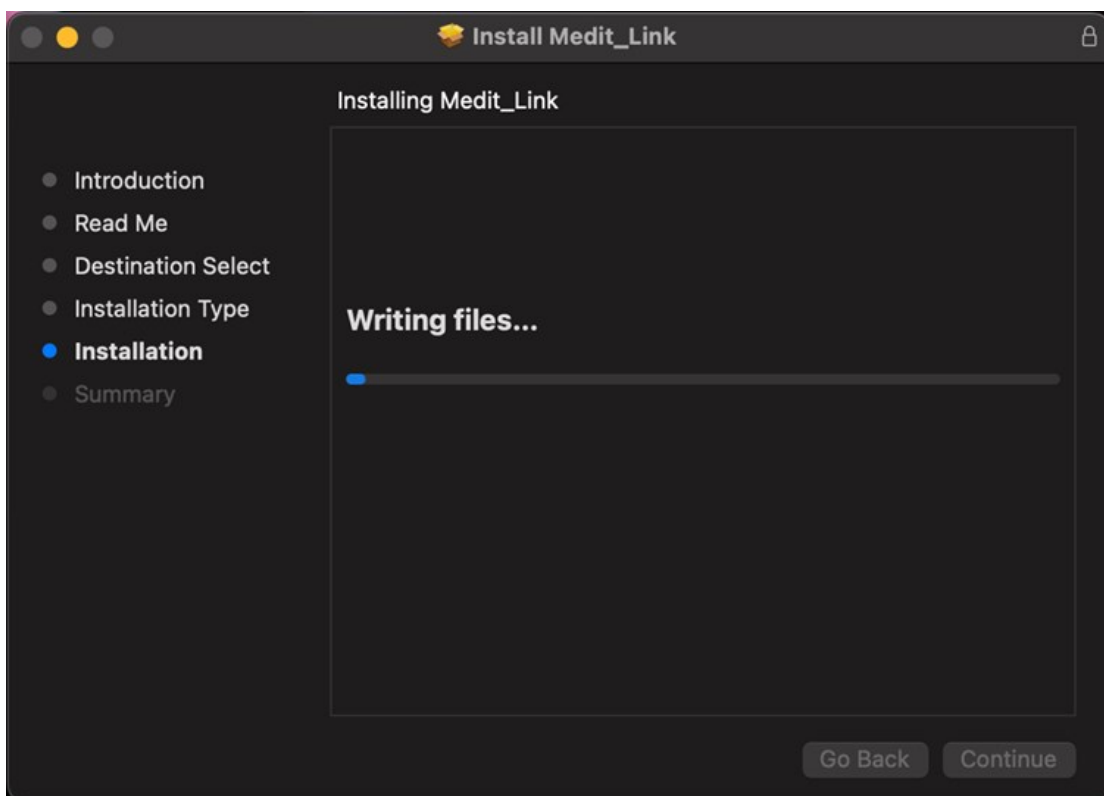


7. 「閉じる」をクリックし、インストール画面を終了します。

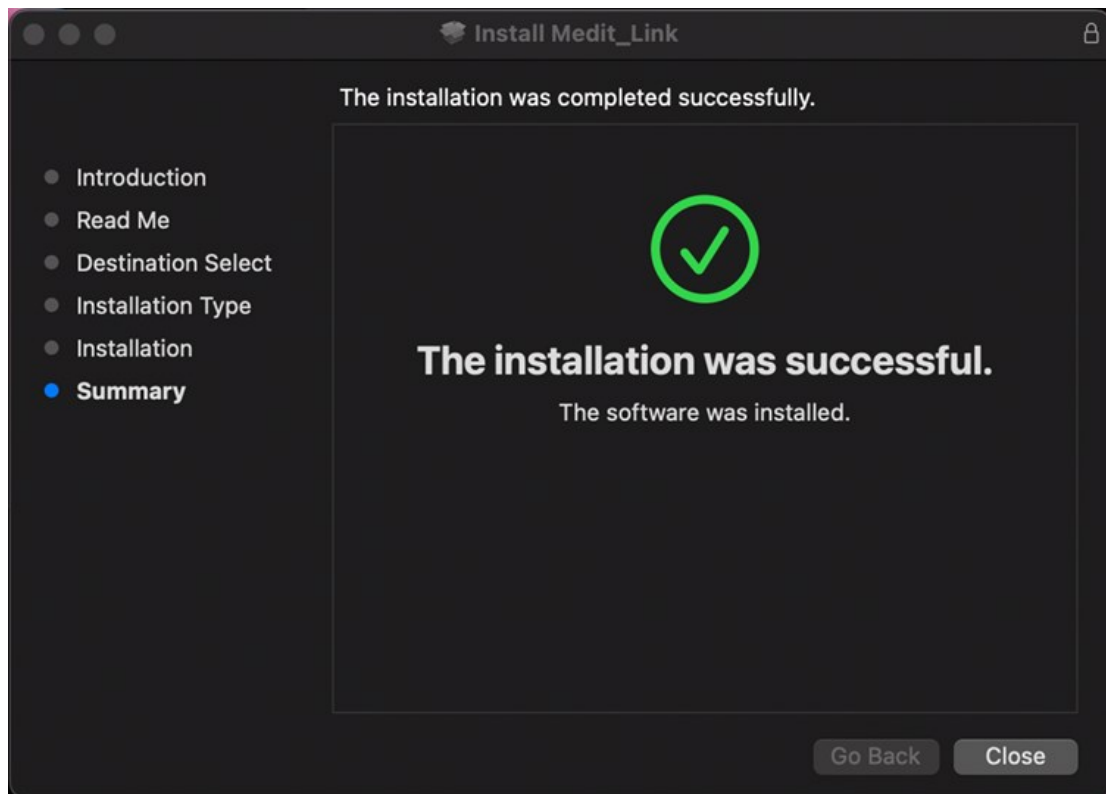

登録 & サインイン

Medit Link Webサイト

www.meditlink.comからMedit Linkサービスに登録します。

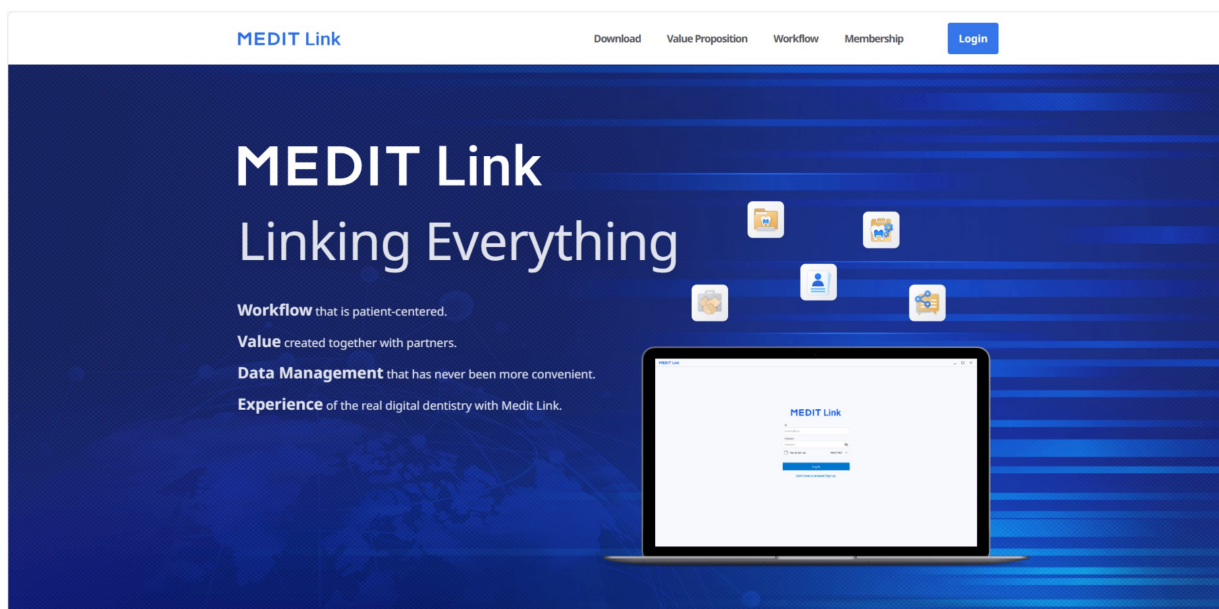

注意

www.meditlink.cnからMedit Link Chinaに登録します。

登録

Medit Linkサービスを使用するためには、アカウントに登録する必要があります。歯科医院または技工所としてアカウントを作成後に、Medit Linkで提供されている機能を利用できます。

以下の4つのアカウントタイプのうち一つを選択し、メンバーシップに登録し、アカウントタイプに応じて、フルまたは限定的な機能や権限のサービスを使用できます。

- 歯科医院 - 管理者
- 歯科医院 - メンバー
- 技工所 - 管理者
- 技工所 - メンバー

管理者は通常、組織の代表者であり、Medit Linkのすべての機能やサービスにフルにアクセスできます。一方で、メンバーアカウントは限定的なアクセスになります。

メンバーシップに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. 「まだアカウントをお持ちでない場合 ログインページの「登録」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. 説明内容を読んだ後に、希望するアカウントタイプの「登録」ボタンをクリックします。



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. 以下の登録フォームが表示されます。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

resistertest@medit.com

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. 歯科医院または技工所名を入力し、アカウントタイプに従い、以下のように進めてください。
 - 管理者として登録する場合、入力名が利用できるかどうかを「利用状況の確認」をクリックして確認します。
 - メンバーとして登録する場合は、「検索」をクリックします。管理者は他のメンバーが登録する前に組織を登録する必要があります。
5. 登録フォームの残りを記入し、「登録」をクリックします。

注意

登録中にマーケティング情報を受信することに同意された場合、Meditから製品やサービスについて役に立つ情報を受信できるようになります。

6. 確認メールが届きます。
7. 登録手続きを完了するには、確認メールにあるリンクでメールアドレスを認証します。

ログインおよびウェルカムページ

1. ログインページにメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. 事業情報を入力されていない場合、以下のダイアログが表示されます。

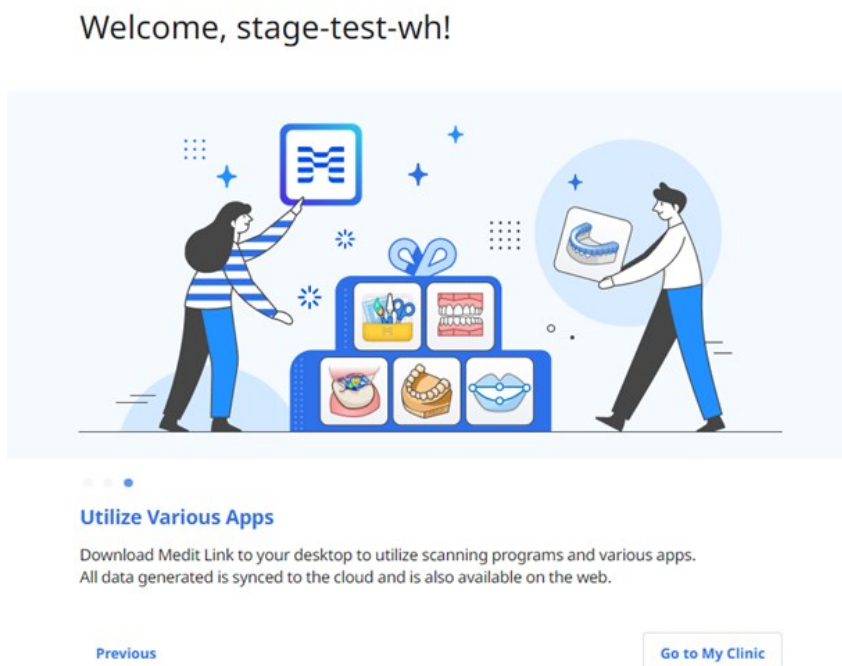

注意


Medit Linkサービスを使用するためには、管理者アカウントを使用して歯科医院または技工所情報を入力する必要があります。

3. 「マイ歯科医院へ」または「マイ技工所へ」ボタンをクリックし、事業名、表紙／ロゴ画像、提供サービス、オフィス住所、電話番号等の歯科医院または技工所情報を入力します。
4. ようこそページで入力した情報はMedit Link WebのMy Info >マイ歯科医院またはマイ技工所タブからいつでも編集できます。

Dashboard

Dashboardの概要

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit LinkアプリとWebの両方で、視覚化されたグラフやチャートで確認できます。

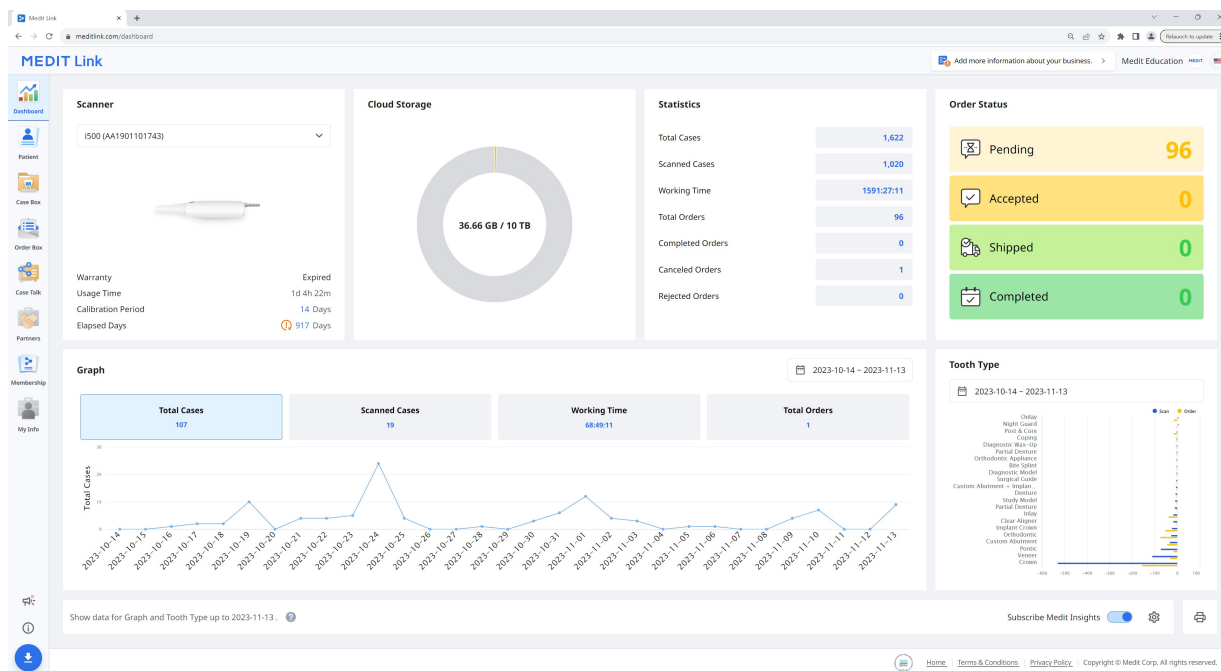

Dashboardのグラフと図は、Medit Linkで完了したすべての作業の統計データを表示しています。

スキャナー	保証、スキャナー使用時間、キャリブレーションの間隔、キャリブレーション経過時間を含む有効なスキャナーに関する情報を提供します。
クラウドストレージ	クラウドと使用中の総容量を表示します。
統計データ	作業ステータスに基づくケースに関する統計データを提供します。
注文ステータス	注文ステータスに基づくケースの統計データを提供します。
グラフ	期間別の作業情報グラフです。
歯の種類	治療情報ごとのスキャンおよび注文の数量に関する統計データを提供します。


Medit Insights

Medit Insightsは、レポートサービスを提供し、使用統計データの分析をやすくします。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- Medit Insights

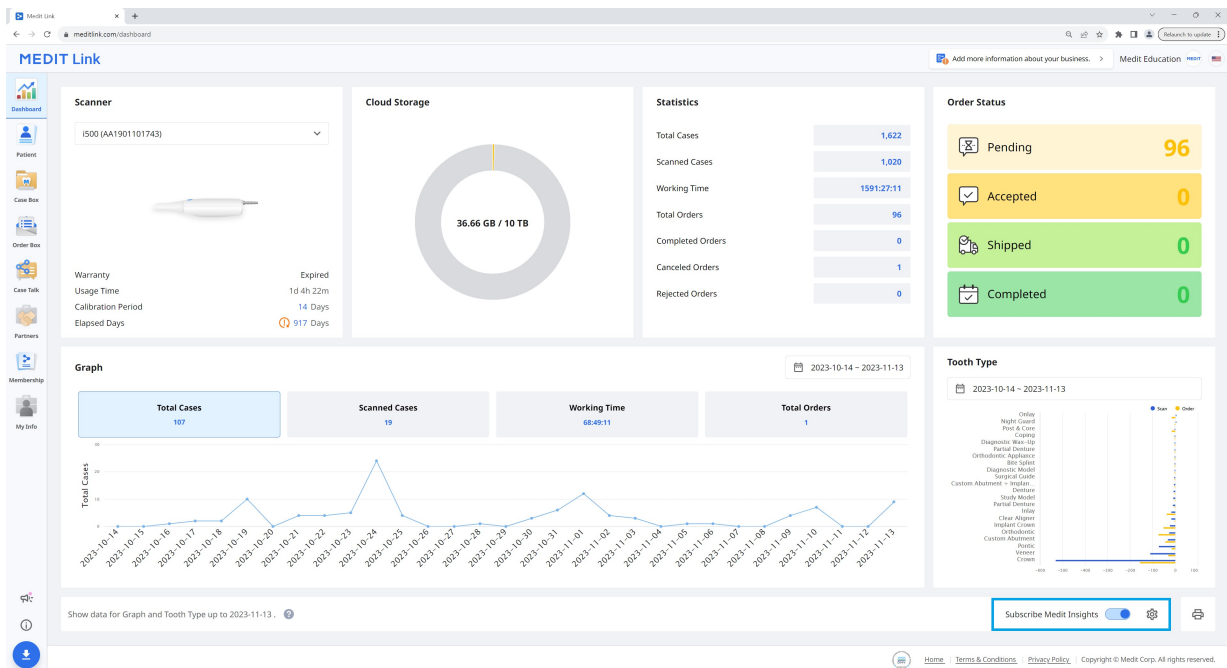

Medit Insightsを購読する

毎月2日にレポートのメールを送信します。追加での登録手続きは必要ありません。「Medit Insightsを定期購読」を有効にするだけです。

Medit Linkアカウントで利用したメールアドレスを使用しない場合、Medit Insightsを受信するために別のメールアドレスを設定できます。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.


The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

20

毎月2日に以下のような統計データ付きのメールが届きます。

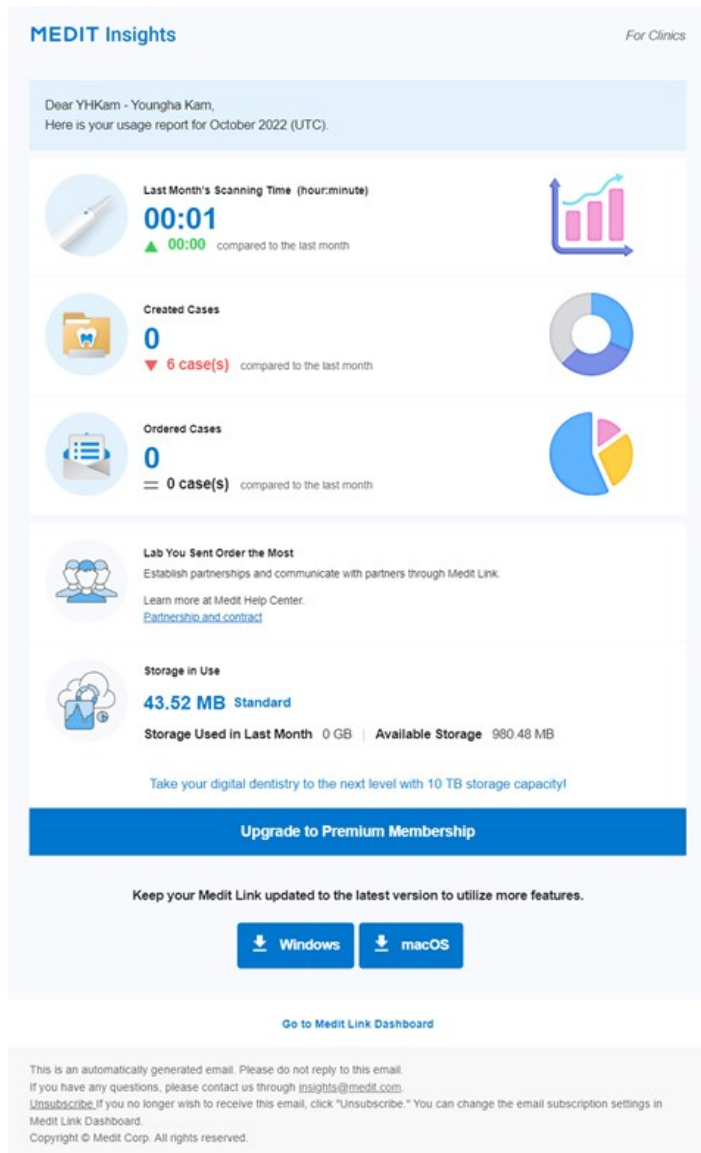

バナー	Meditはこちらに使用に関するヒントや情報を提供します。 * バナーを表示させたくない場合は、マイ情報>マイアカウントにあるマーケティング及び販売プロモーションに同意のボックスのチェックを外してください。
統計データ情報	スキャン時間、作成されたケース、最も発注した技工所等の統計データ情報が表示されます。
Medit Linkダウンロード	ボタンをクリックすると、Medit Linkダウンロードリンクが提供されます。
Dashboard	すべての統計データ情報は、Dashboard 情報に基づいています。Dashboardでより詳細な情報を確認できます。


Medit Insightsの購読を解除する

Dashboardの「Medit Insightsの購読」を無効にするか、受信したメールで「購読解除」をクリックします。

Patient

患者名と患者IDに基づいてケースを管理できます。


Medit Linkアプリケーションを介して登録されたすべての患者がリストに表示され、患者とそのケースを管理するのが簡単になります。

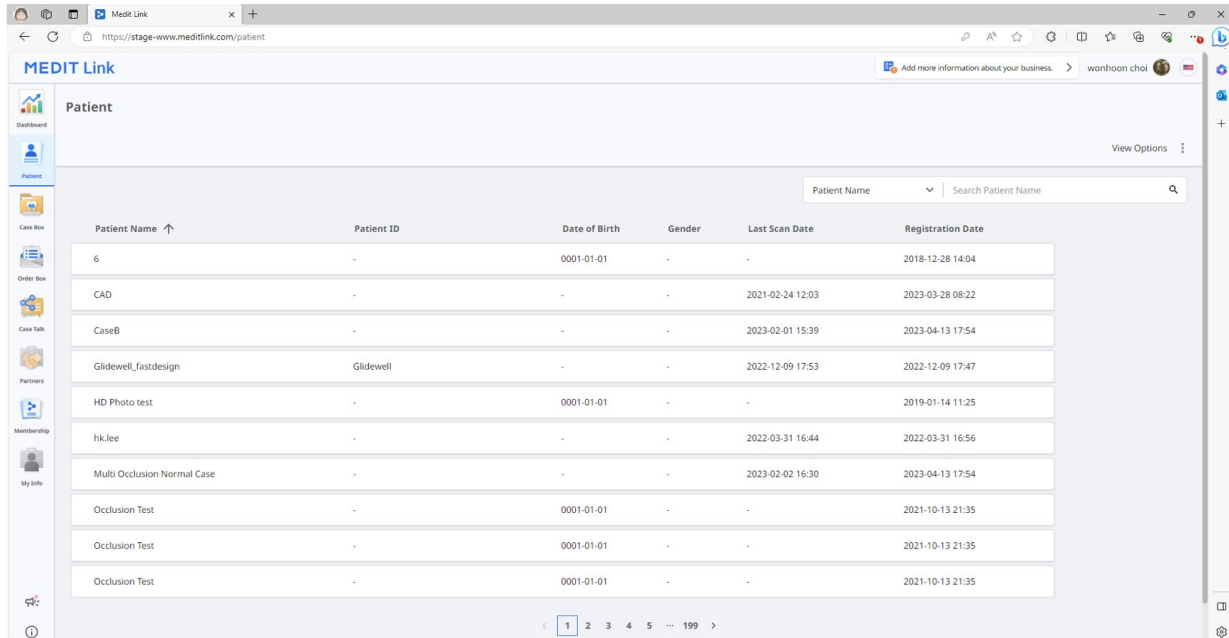

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

患者の検索


1. 患者リストの右上にあるドロップダウンメニューから患者名または患者IDのいずれかの検索条件を選択します。

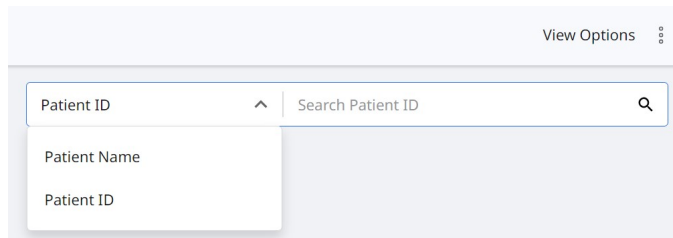

2. 患者名または患者IDを入力して、選択した検索条件に基づいて検索します。
3. 入力した患者名またはIDの患者のみがリストに表示されます。

Case Box/Work Box

Case Box(歯科医院)またはWork Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションでユーザーが作成したすべてのケースを表示します。別のプログラムをインストールせずにウェブブラウザからファイルを確認できます。

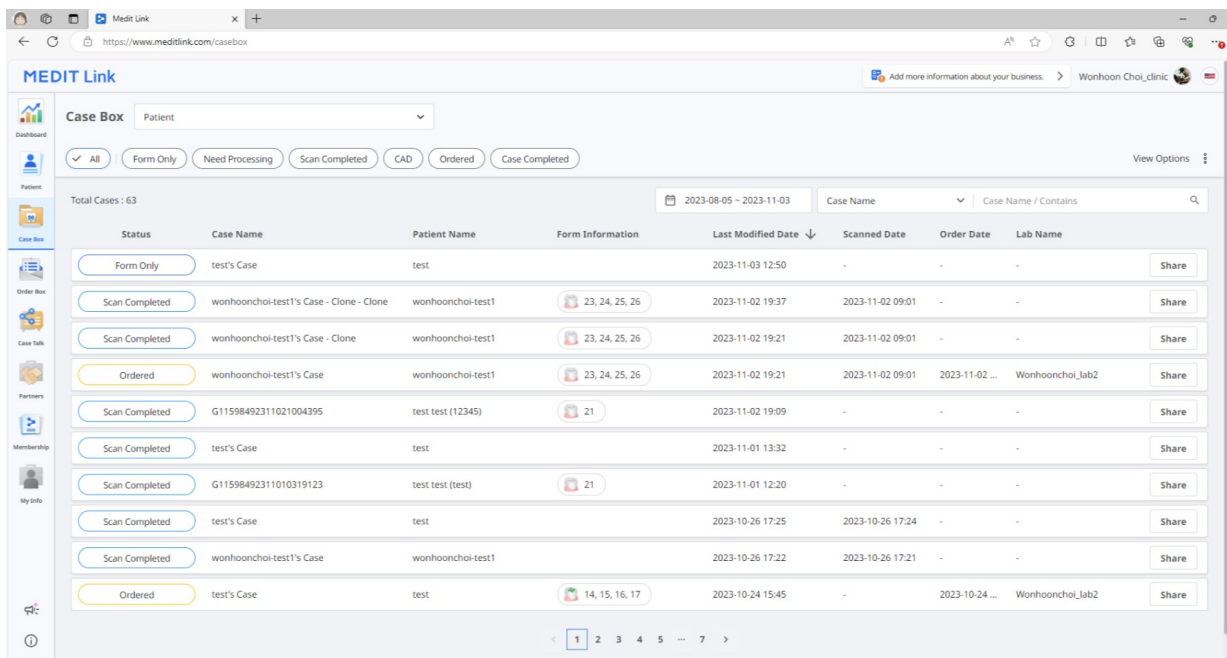


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A date range filter is set to '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar for 'Case Name' is also present. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

ケースフィルタリング


患者別フィルタリング

患者別にケースをフィルタリングできます。特定の患者のケースを探す場合に役に立ちます。

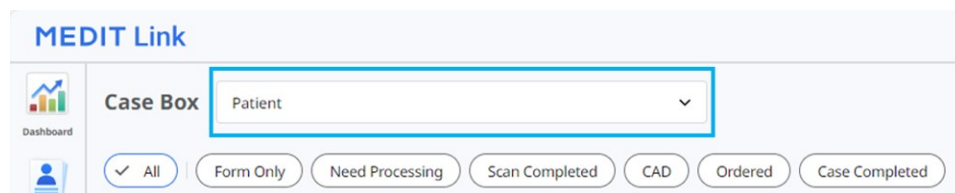

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing 'Patient' as the selected option. Below the dropdown are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 検索フィールドに患者名を入力します。

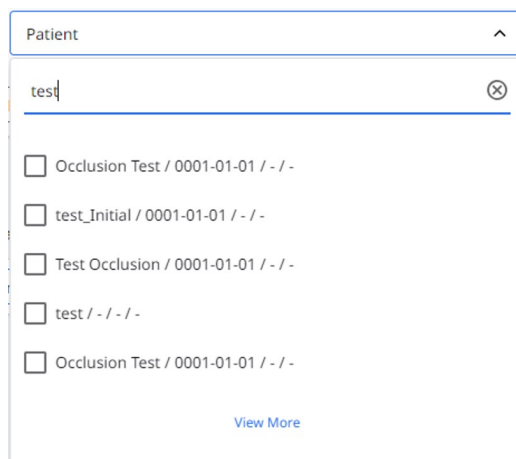

The screenshot shows the search results dropdown menu. The search field contains 'test'. Below the search field is a list of search results, each with a checkbox and a label: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom.

2. 検索結果リストから患者を選択します。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されるので、作業をするケースを探すのが簡単になります。

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 63

2023-08-05 ~ 2023-11-03 Case Name Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

ステータス別フィルタリング

各ステータスに基づいてケースをフィルタリングできます。

☐ All
 ☒ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☒ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

- 表示したいステータスをクリックできます。ブラウザーには、選択されたステータスのケースのみが表示されます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

以下のステータスタイプはアカウントタイプに基づいて提供されます。

Case Box(歯科医院)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box(技工所)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

期間別フィルタリング

設定した期間内で最後に修正したケースをフィルタリングし、表示できます。

1. 期間フィルターをクリックします。

2. 範囲を選択します。

- すべて: すべてのケースを表示します。
- カスタム範囲: 開始日と終了日を特定して、選択した期間内で修正されたケースを表示します。
- 今日: 今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日: 昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間: 今日を除く過去7日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間: 今日を除く過去30日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去90日間: 今日を除く過去90日間が最終修正日のケースを表示します。
- 今月: 今月のケースを表示します。
- 先月: 先月のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。


検索別フィルタリング

検索機能を利用して、必要な情報を容易かつ迅速に検索できます。

歯科医院／技工所アカウントに基づくオプションを検索します。

Case Box(歯科医院)	ケース名、患者名、患者ID、技工所名
Work Box(技工所)	ケース名、患者名、技工所名、注文ID

ケースの詳細

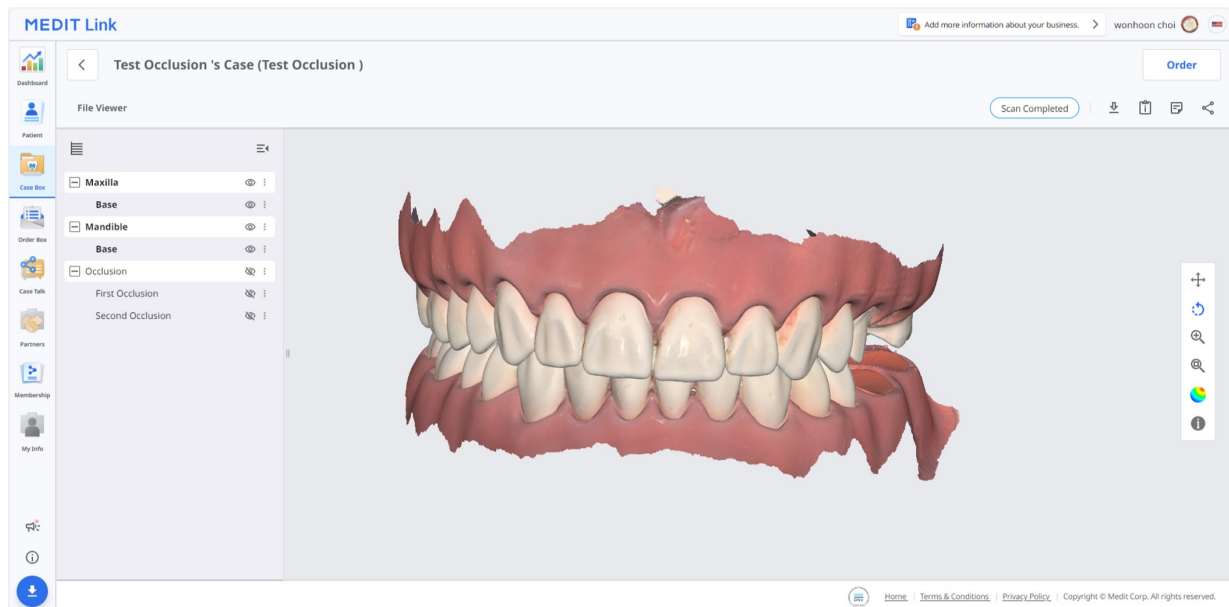


以下のケース管理ツールは、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	Case Box/Order Boxへ	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) に同じケースのショートカットを提供します。
	ダウンロード	ケースのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモとタグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	共有	共有用のリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。

Order Box/In Box

Order Box(歯科医院)またはIn Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションの注文済みケースを表示します。

注文詳細

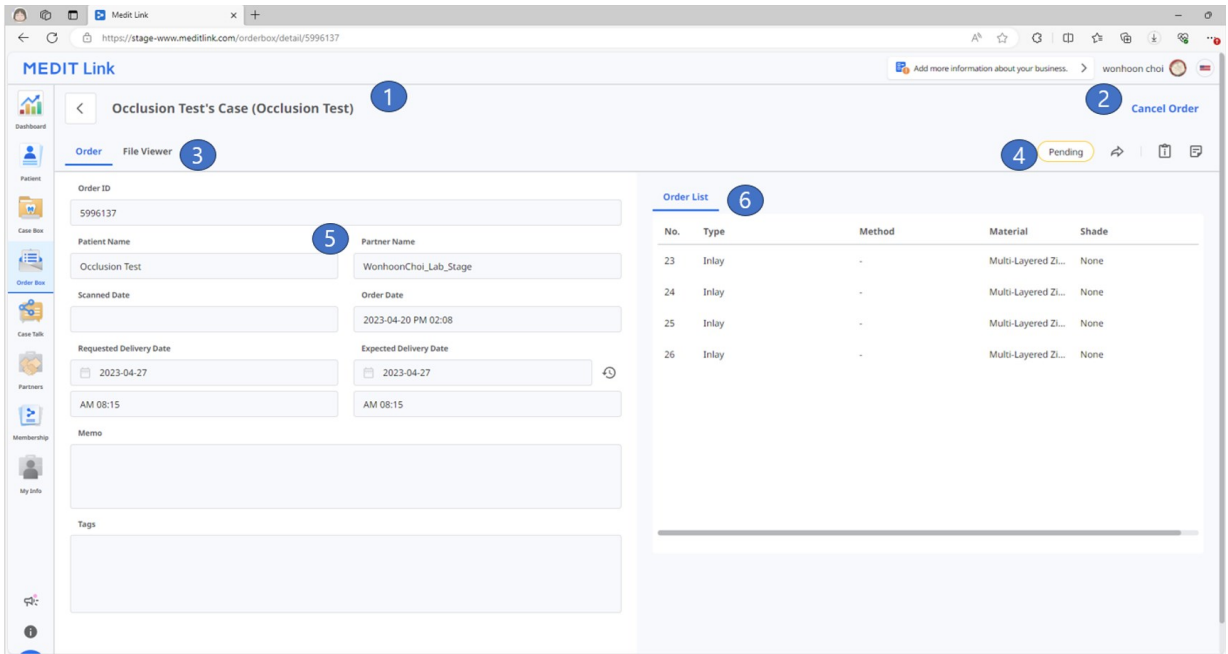

1	ケース名および患者名を表示します。
2	注文管理(承認/キャンセル、納品/受領)用の機能を提供します。
3	使用可能なタブの表示: 注文、ファイルビューアー
4	ケースおよびファイルの管理用の機能を表示します。ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
5	注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
6	注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。


Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文ID、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ、タグ等の注文に関する詳細情報を確認します。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。 ファイルビューアーは取得したまたは添付された3D模型や2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、指定した特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有されているケースリストを確認できます。

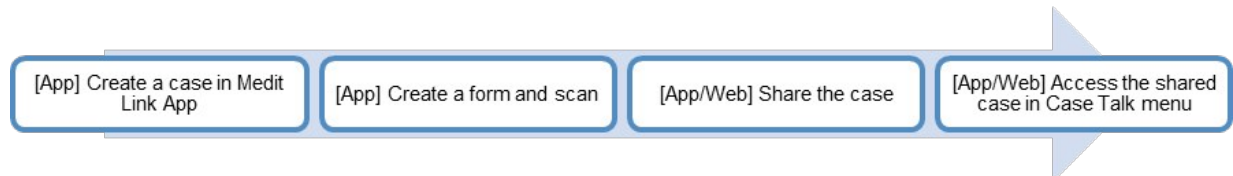


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。

Case Talkの作成

Case Box/Work Boxで作成されたケースに共有リンクを作成できます。

1. 共有するケースを探し、右側の「共有」ボタンをクリックします。

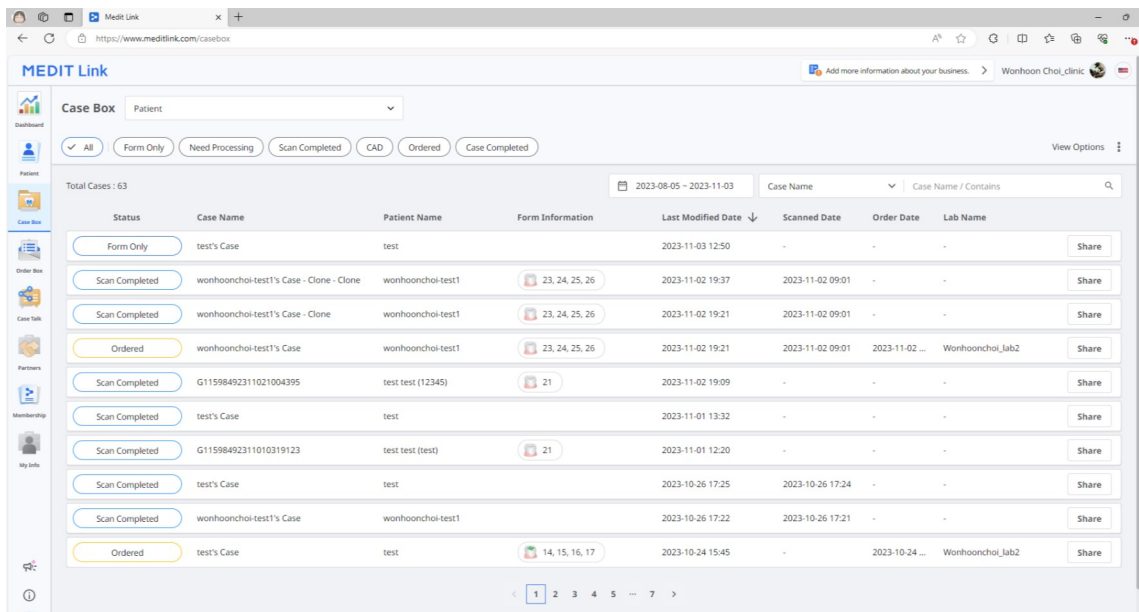

2. 共有したいケースを選択します。

Share through Case Talk

File List

☒	Maxilla			
☒	Base	meditMesh	3,449KB	
☒	Mandible			
☒	Base	meditMesh	2,926KB	
☒	Occlusion			
☒	First Occlusion	meditMesh	662KB	
☒	Second Occlusion	meditMesh	611KB	
☒	Face Scan Data			

6 items selected. 15.23MB/200 MB

Share With

Share with Anyone

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

- 共有権限タイプと共有オプションを設定します。
- 「リンクを取得」をクリックし、共有リンクを作成します。

共有権限タイプと共有オプションの設定

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via

Share via

PIN Code

☐ PIN Code Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

共有相手	- 誰とでも共有 共有リンクを作成します。ファイルを誰とでも共有できます。 - 特定の人と共有する 共有リンクを作成し、特定の人に送信します。
共有方法	「特定の人と共有」を選択する場合、さまざまな方法で特定の人とリンクを共有できます。 - メールアドレス - SMS - パートナー
有効期限	リンクの有効期限を設定します。リンクの有効期限が切れたら、リンクを共有している人は、リンクにアクセスできなくなります。有効期間を今日から最長90日間まで延長できます。
PINコード	データの安全性を確実にするために6桁のアクセスコードを設定します。
患者の名前を共有	このオプションにチェックを入れる場合、リンクを持っているすべての人は患者名を確認できます。
ダウンロード許可を付与する	このオプションをオンにすると、共有リンクを持つすべてのユーザーがファイルをダウンロードできます。
コメント投稿を許可	- このオプションをチェックすると、共有リンクを介して通信できるようになります。 - オプションのチェックを外すと、受信者はコメント閲覧だけができ、コメントを追加することはできません。
コメント	コメントセクションにメッセージを残すことができます。

Case Talk詳細

共有ケースでファイルを確認できます。以下の機能は、Case Talk詳細ページ上でご利用できます。

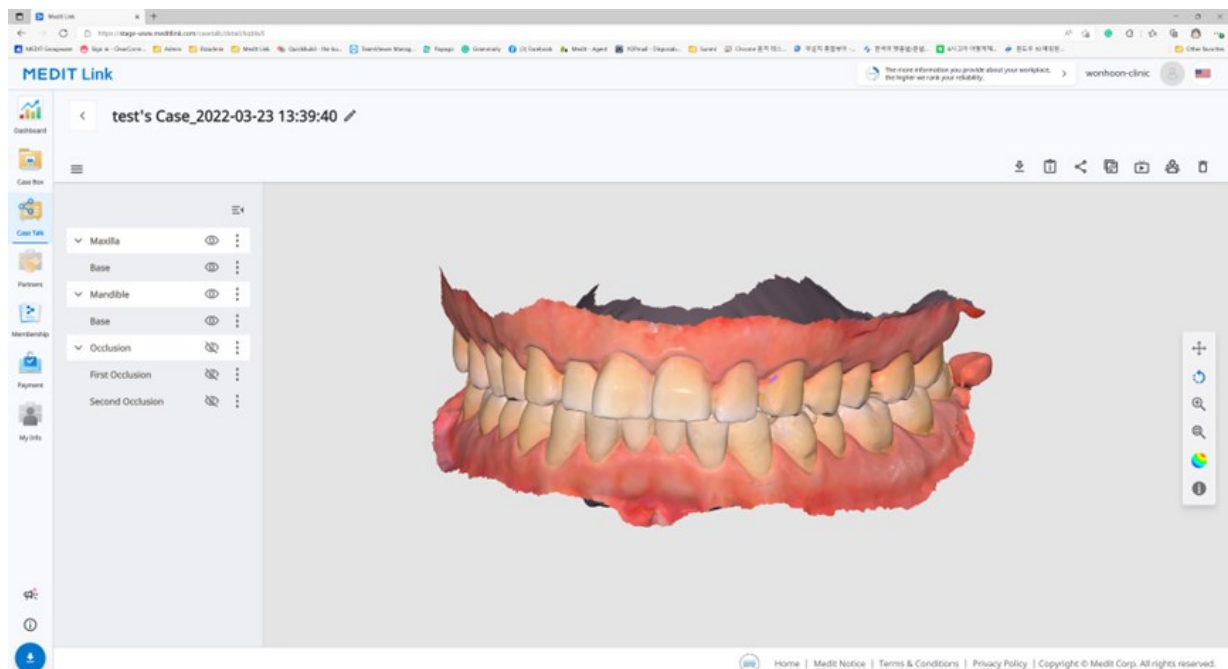

	ダウンロード	ケースのすべてのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。

	共有	共有設定を変更します。
	リンクのコピー	共有リンクをクリップボードにコピーします。コピーされたリンクは、ウェブブラウザ上で共有ファイルを表示します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクにアクセスしているすべてのユーザーを表示します。
	削除	共有リンクを削除します。削除した共有リンクはもうアクセスすることはできません。

注意


以下のサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

Webビューワー

WebブラウザのCase Talkを介して共有データを表示できます。

注釈とコメントを使用してリンクにアクセスした人とやり取りができます。

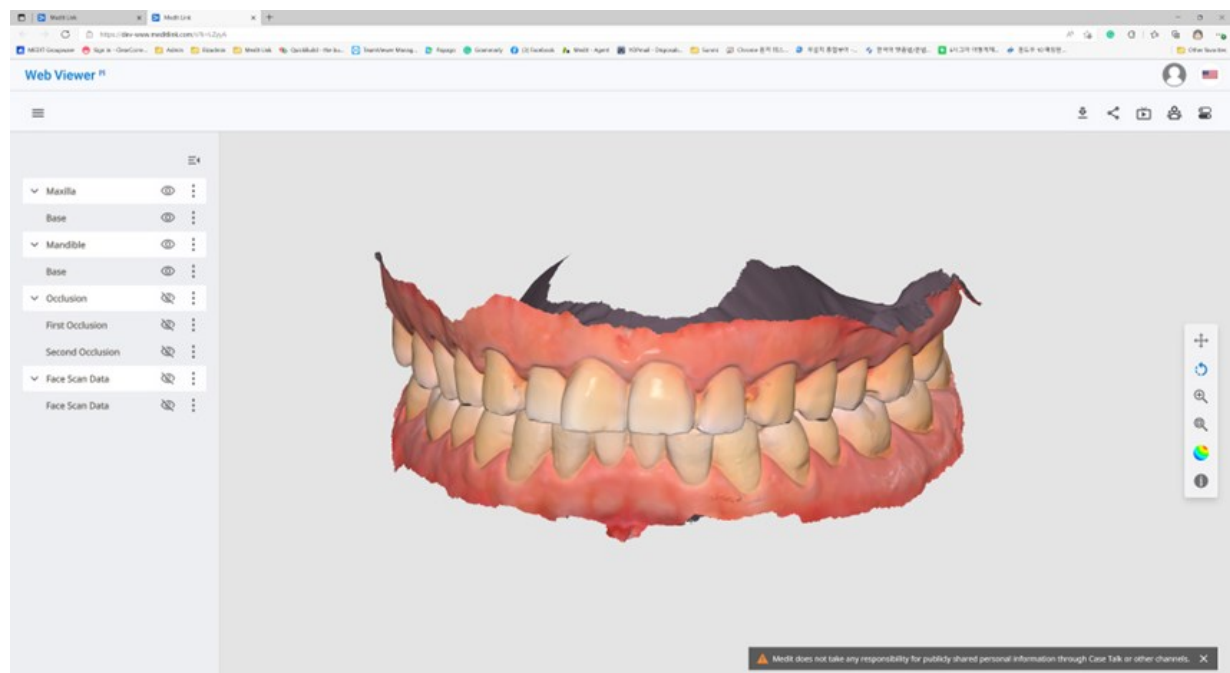

	ダウンロード	この場合、すべてのファイルをPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。

	参加者	共有リンクに接続しているすべてのユーザーを表示します。
	歯牙ラベリング	歯牙ラベリングシステムを変更します。


注意

以下のサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

注釈

3Dモデル上の特定の位置に注釈を追加できます。リンクを持っている人は誰でも追加された注釈を閲覧できます。

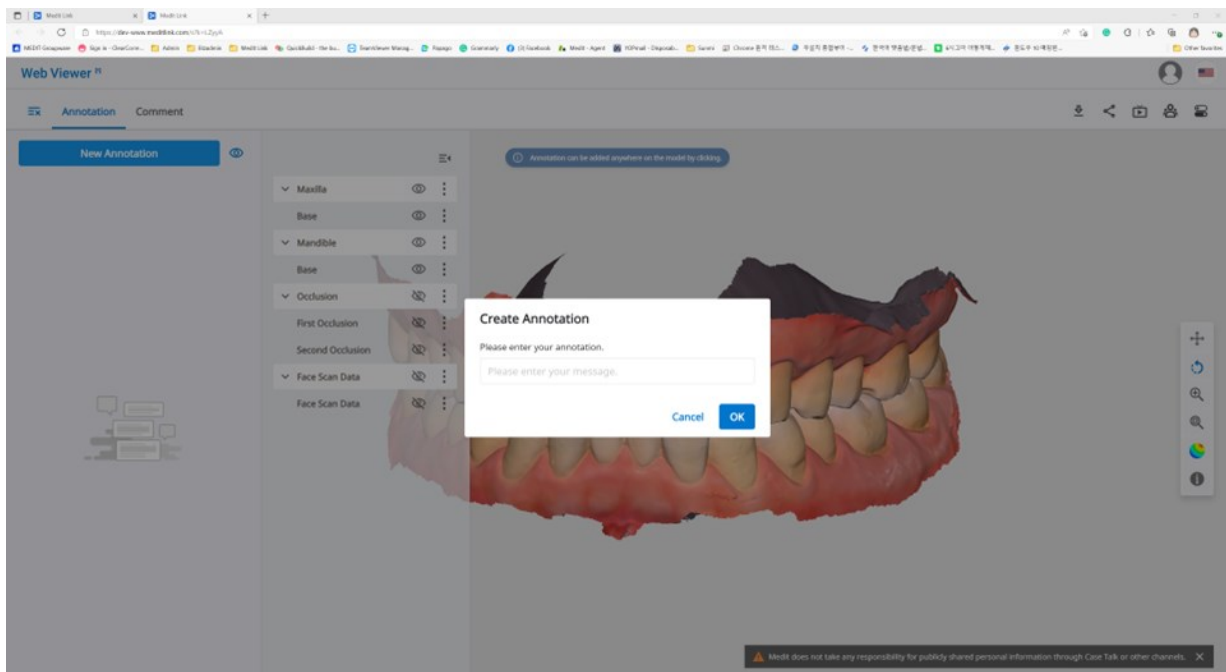

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 注釈

1. 左上部隅にあるメニューアイコンから「注釈」タブを選択します。「新規注釈」ボタンを使用して、どこでもデータをクリックして注釈を追加します。
2. メッセージを入力し、「OK」をクリックして保存します。

Create Annotation


Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. 注釈を簡易的な連絡方法として使用できます。

作成済みの注釈をクリックし、返信を入力し「送信」を押します。

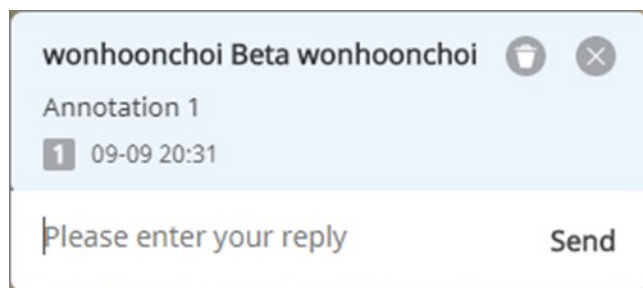

コメント

Web Viewerメニューの「コメント」タブを通して、リンクにアクセスするユーザーとやり取りができます。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- コメント

リアルタイムでの画面共有


リアルタイムで画面を共有できます。

注意

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- ライブ

1. 「ライブ」をクリックして、接続しているユーザーと自分のWeb Viewer画面を共有します。


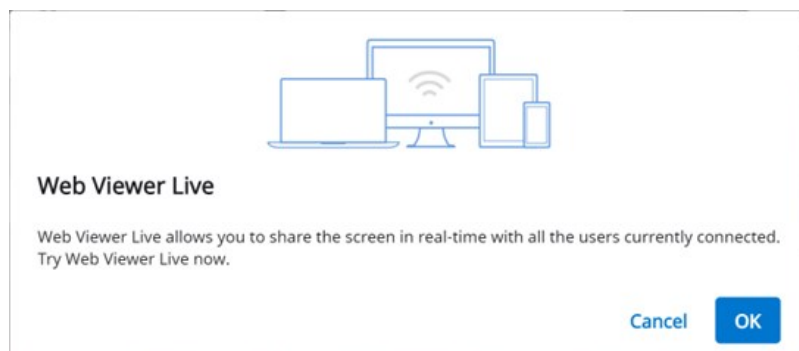


2. 「OK」をクリックして、画面共有を開始します。
3. リンクにアクセスしている他の人は画面共有を承認する必要があります。
4. 画面共有をリクエストしたユーザーの画面は、リクエストを承認した人の画面と同期されます。



データツリー

すべてのデータは、データツリーの属性に従ってグループ化され表示されます。データを表示または非表示、不透明度などを調整できます。

データツリーコントロール

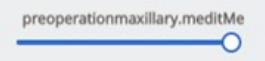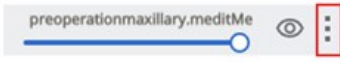表示/非表示	目アイコンをクリックし、ビューのデータを表示または非表示にします。データの表示/非表示をグループまたは個別ファイルでコントロールします。
不透明度	表示されている要素上にマウスを合わせ、不透明度スライダーを確認します。スライダーを調整して、データの透明性を変更します。 
拡張メニュー	拡張メニューは、各データツリー要素の右側に表示されます。以下のオプションが含まれています。  • これのみを表示: 現在のデータ以外のデータをすべて非表示にします。 • 非表示: 現在のデータを非表示にします。

3D模型のコントロール

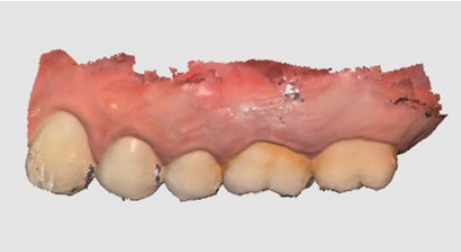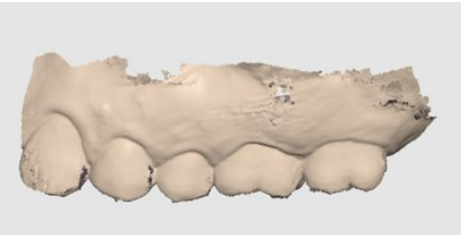	パン	模型を動かします。
	回転	模型を回転させます。
	拡大/縮小	模型を拡大/縮小します。
	ズームフィット	画面中央に模型を配置します。
	模型表示モード	実際のテクスチャの色でデータを表示します。 
		データを単色で表示します。 

Partners

パートナー候補を検索し、パートナーシップをリクエストしたり、現在のパートナーのリストを表示したりできます。


注意

Googleマップを使用するサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

パートナーを検索する


ビジネス名および/または住所でMedit Linkユーザーの検索ができます。

検索結果で、連携したい事業にパートナーシップのリクエストを送信できます。

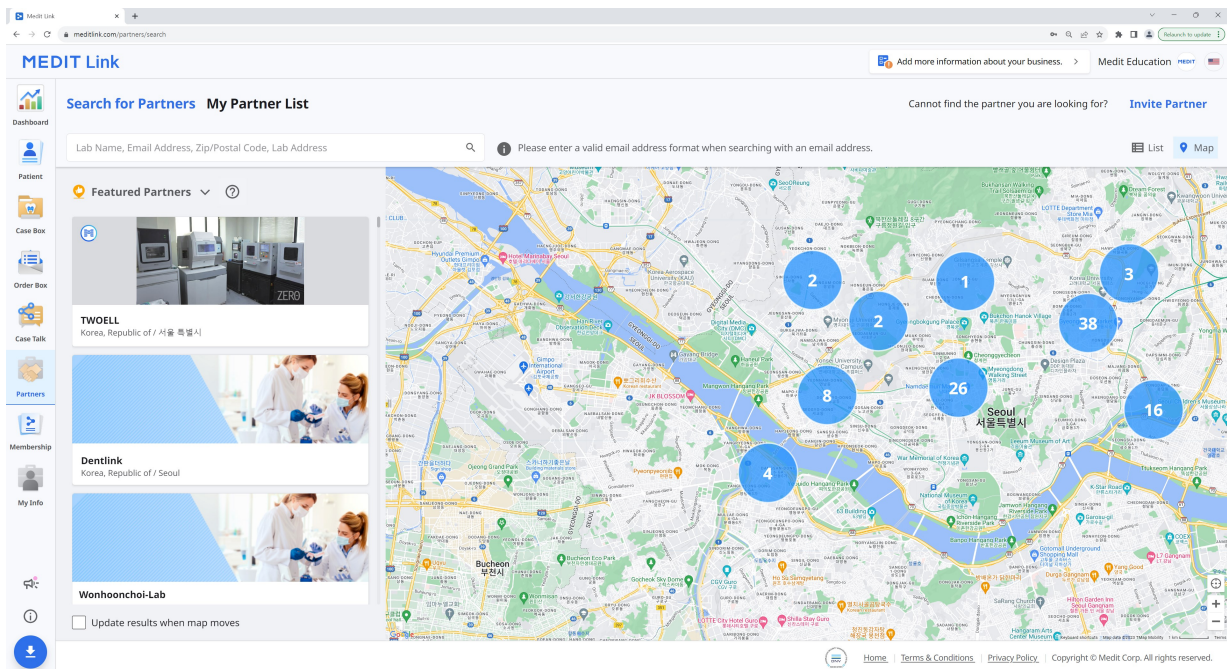

マイ契約リスト

マイ契約リスト中のすべての既存のパートナーの事業体との現在のパートナーシップを確認できます。

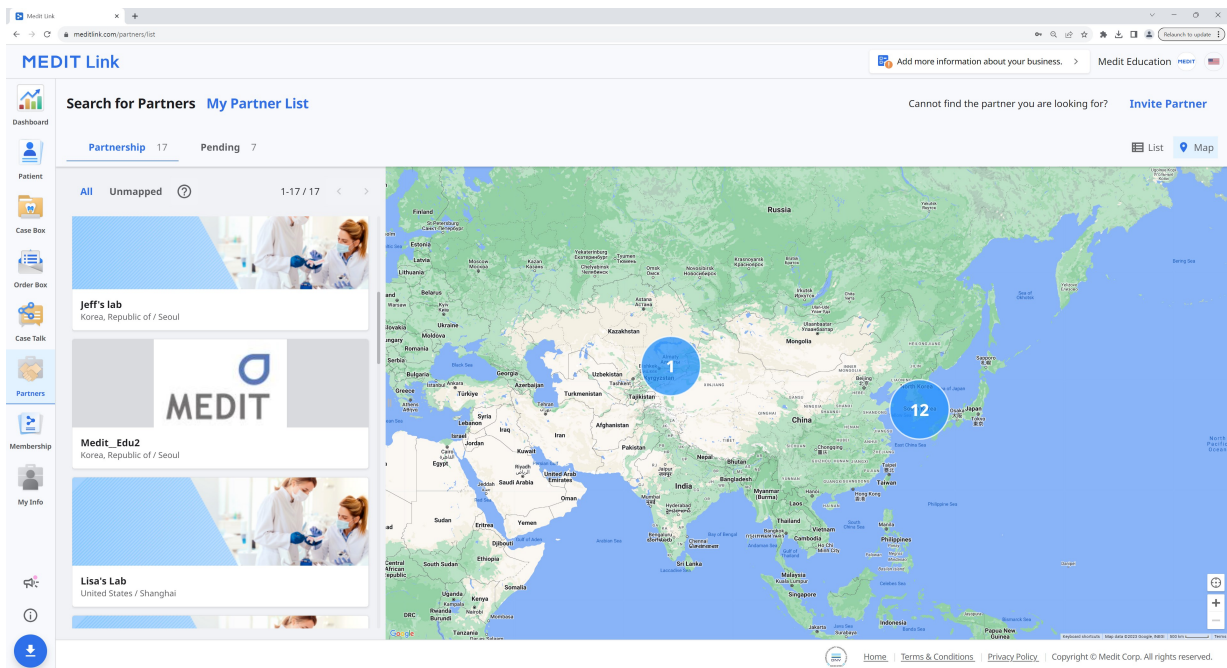

パートナーの招待

連携を希望する歯科医院または技工所がある場合、Medit Linkに参加するように招待できます。招待が承認されるとパートナーシップは自動的に形成されます。

1. 画面の左上にある「パートナーを招待」をクリックします。
2. 連携を希望する事業体のメールアドレスを入力し、パートナーシップリクエストと共に招待メールを送信します。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. 招待を受けた組織が招待を承認し、Medit Linkに登録すると、パートナーシップは自動的に成立されます。

Membership

Medit Linkのメンバーシップポリシーは、より広範なデジタル環境を構築し、徐々にクラウドプラットフォームに基づくさまざまなサービスを提供することを目的としています。

新しいメンバーシップポリシーで当社のお客様により一貫性があり、パーソナライズされたご利用を提供できることを目標としています。

2つのメンバーシッププランがご利用できます。

標準

- すべての登録済みユーザー向け無料標準プラン
- 1GBのクラウドストレージ
- 新規ユーザー向け

Premium

- 有料プラン
- 10GBのクラウドストレージ
- 多くのケースやさまざまなデータを所有するユーザー向け
- 1ヶ月間無料トライアル

	標準	Premium
クラウドストレージ	1 GB	10 TB
月額料金	無料	\$0.99/月

* クラウドストレージではRAWデータが占めているスペースは計算されません。

注意

メンバーシッププランはMedit Link中国でご利用できます。機能の公式リリースまで無料でプレミアムプランをご利用できます。

メンバーシップ

マイプラン

左側のセクションでは、現在のメンバーシッププランを確認できます。いつでもメンバーシップのサブスクリプションステータスを変更することもできます。

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

クラウドストレージ

右側のセクションで、クラウドストレージの管理ができます。

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	

期間の設定	作成したデータを削除する特定の期間を設定します。 - すべて: すべてのファイルを表示します。 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。 6か月前: 作成後6か月が経過したファイルを表示します。 1年前: 作成後1年が経過したファイルを表示します。
RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を保護するために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。


結果ファイルと添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、容量を空けます。

サブスクリプション登録


現在、引き換えコードでスタンダードプランまたはプレミアムプランをご利用の場合、プレミアムメンバーシップを登録できます。

Stripeサービス(www.stripe.com)からお支払いを完了できます。

1. 「登録」ボタンをクリックします。

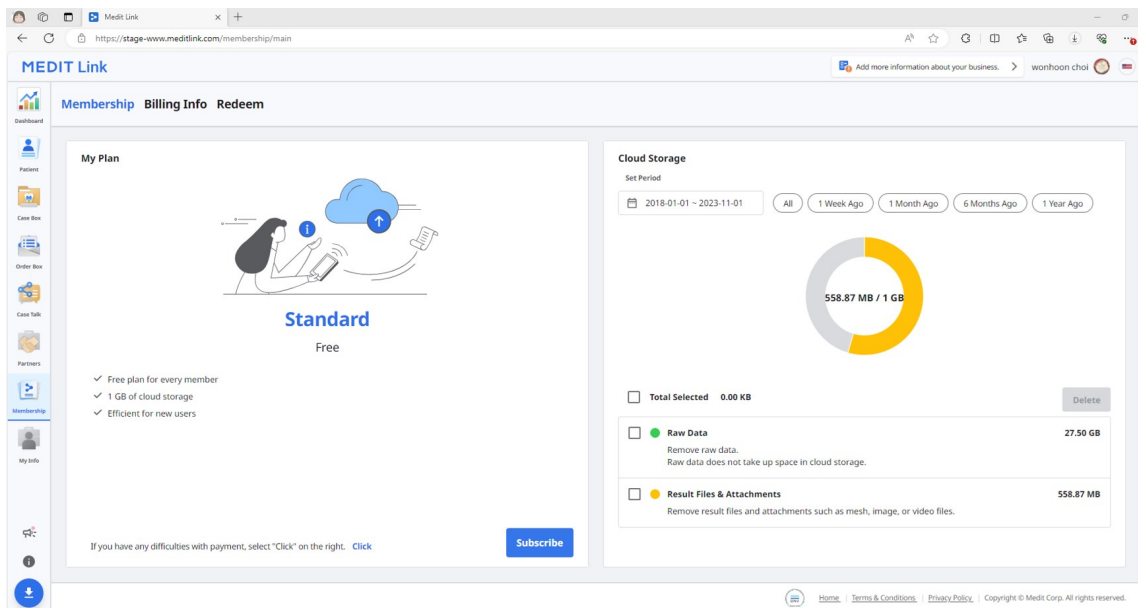

2. プレミアムプランの説明を確認し、「登録」を再度クリックします。

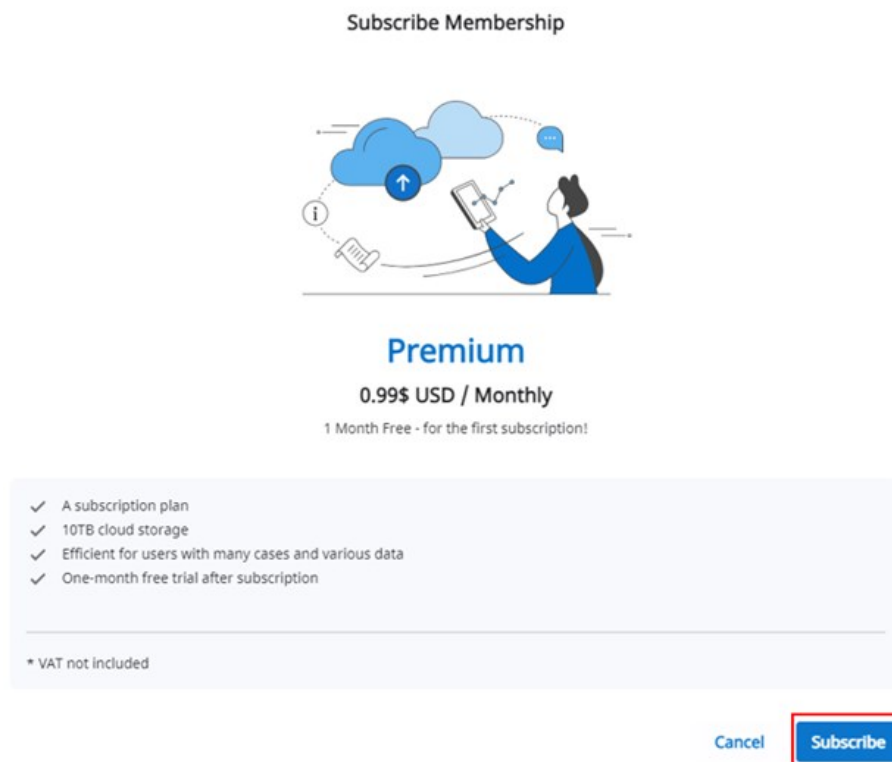

3. 価格と条件を確認し、支払いに必要な情報を入力します。次に、「登録」をクリックします。

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription 100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe

Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Name on card

Country or region

South Korea


☐

Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.


4. 支払いには、数秒かかります。終了したら、確認メッセージが表示されます。

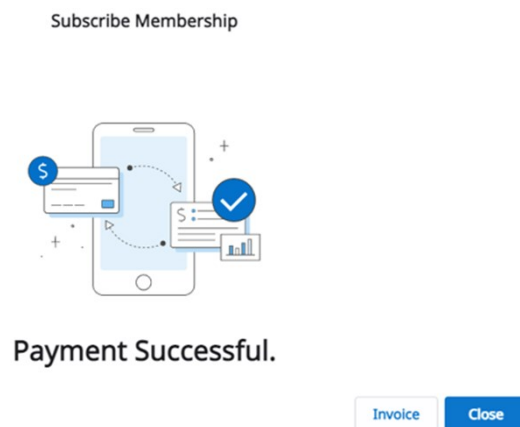


登録を解除する

いつでもメンバーシップの登録を解除できます。登録解除後に、残余日数の間は、プレミアムメンバーシップをまだ使用できます。プランは、次回支払日からスタンダードプランに変更され、クラウドストレージは1 GBに制限されます。クラウドストレージが容量を超えている場合、ファイルはバックアップされず、注文および共有機能は利用できません。


1. 「登録解除」をクリックします。

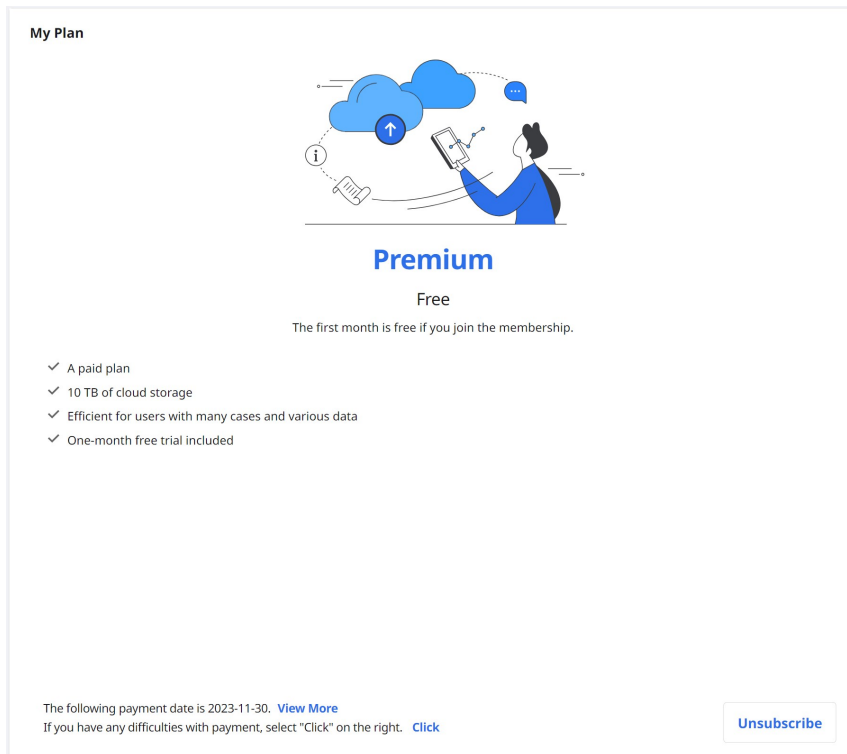

2. 「登録キャンセル」をクリックします。

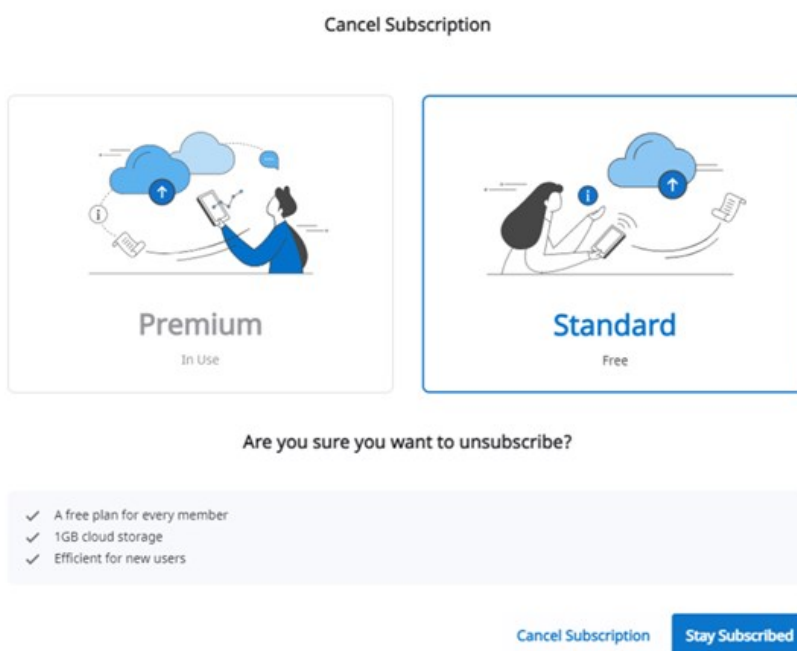

3. 登録解除を確認するには、次のポップアップ方式ウィンドウから再度「登録キャンセル」をクリックします。

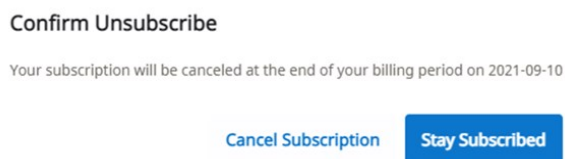

4. 登録がキャンセルされました。
5. プランは、次回支払日からスタンダードプランに変更され、クラウドストレージは1 GBに制限されます。クラウドストレージが容量を超えている場合、ファイルはバックアップされず、注文および共有機能は利用できません。

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

請求情報

各支払いのインボイスを含めたメンバーシップ登録に関する支払い履歴を確認できます。また支払い方法を追加または変更することもできます。変更は次回支払い予定日から適用されます。

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

支払い方法の追加方法

1. 「支払い方法の編集」をクリックします。

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. 「支払い方法の追加」をクリックします。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. 必要な情報を入力し、「追加」をクリックします。

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. 新たに追加された支払い方法は、デフォルトとして設定され、次回のお支払いから使用されます。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

支払い方法の変更方法

1. 支払い方法

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic


\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...
+ Add payment method				

2. 「デフォルトにする」をクリックし、デフォルトの支払い方法として選択したカードを設定します。

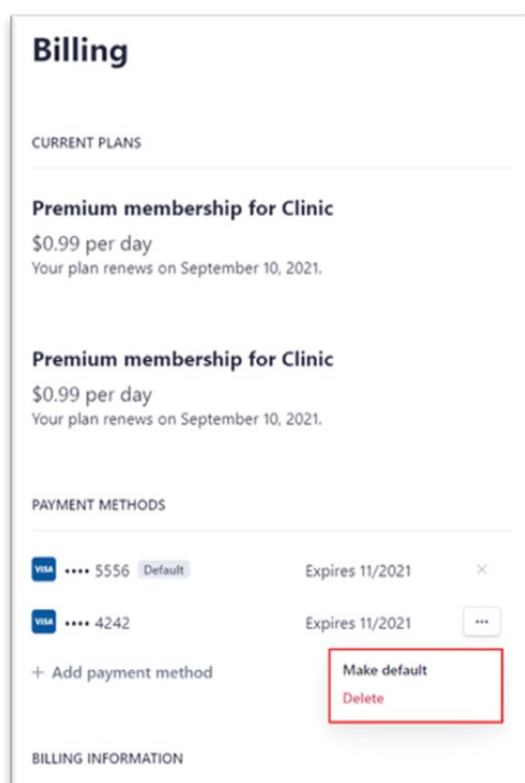


引き換え


プロモーションの一環として提供された引換コードを登録します。引換コードを使ってプレミアムメンバーシップを使用できます。

引換コードの登録

1. 引換コードを入力し、「登録」をクリックします。

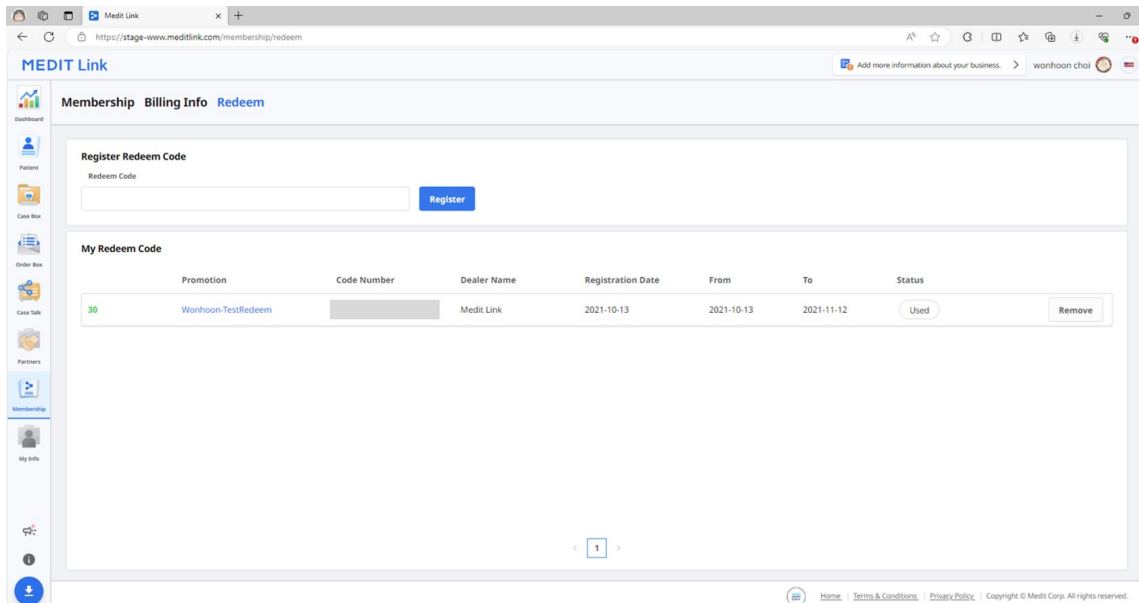

2. 通知を読み、ポップアップ式ダイアログで「登録」または「適用」を選択します。
 - 登録: 引換コードを登録します。登録後に後で引換コードを有効化し、使用することができます。
 - 適用: 引換コードを登録し、有効化します。プロモーション割引はすぐに適用されます。

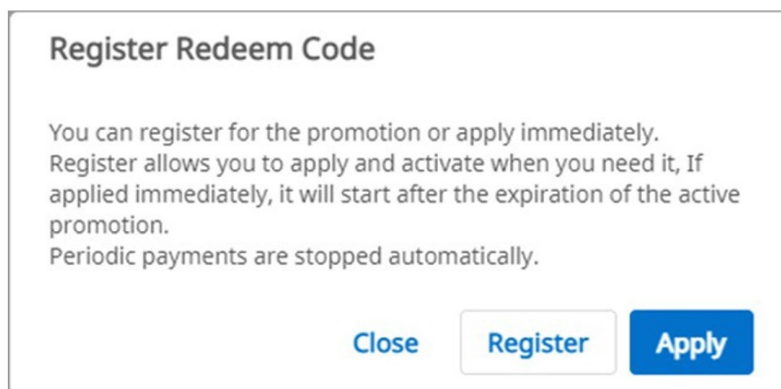

引換コードの有効化

複数の引換コードを登録できますが、使用するコードを有効化する必要があります。

1. 使用するコードの横にある「アクティベート」ボタンをクリックします。
 - 「Activated」ステータスのコードがない場合、選択しているコードがすぐに適用されます。
 - すでにアクティベート済みコードが存在している場合には、新たに選択されたコードが「Waiting」ステータスに変更されます。現在アクティベート済み引き換えコードの有効期限が切れている場合、「Waiting」ステータスの新しい引き換えコードが自動的に有効になります。

注意

1個の引換コードのみをアクティベートでき、1個のコードのみが「Waiting」ステータスにできます。

My Info

マイアカウント

登録時に入力した情報を確認／編集でき、メンバーシップの確認ができます。

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)


Dashboard


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

Account Information



Email Address
wonhoon.choi@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)
Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name
wonhoon choi

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

マイ歯科医院／マイ技工所（管理者アカウントのみ）

歯科医院または技工所の情報を確認・編集できます。このセクションは管理者アカウントのみが利用できます。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

マイ・スキャナー

アカウントの接続済みデバイス情報を確認できます。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

No.

Type

Serial Number

Usage Time ⓘ

Last Connected

Last Calibrated

Warranty Start Date

Warranty Expiry Da...

Days Left ⓘ

1

i500

-

-

-

-

-

-

-

2

i500

AA1911104453

0d 7h 18m

2023-04-14 12:48

2020-02-14 15:49

2019-12-02

2021-06-01

Expired

3

i500

AA1911104480

0d 0h 49m

-

2019-11-26 16:33

2019-11-19

2021-05-18

Expired

4

i500

AA1911104481

0d 5h 12m

-

2021-02-16 12:37

2019-11-21

2021-05-20

Expired

5

i700

AZ2105102622

0d 8h 15m

2022-09-21 12:09

2022-09-15 11:25

2021-07-09

2022-07-08

Expired

Buy

6

i700w

BF2112100021

0d 7h 4m

2023-04-03 17:42

2023-03-07 17:29

-

-

-

Buy

7

i700w

BF2202100048

19152d 22h 15m

2023-04-03 18:30

2023-03-24 10:35

-

-

-

Buy

8

i600

BG2202100024

0d 5h 47m

2023-07-31 16:10

2023-06-26 13:43

2022-03-30

2023-03-29

Expired

Buy

9

i600

BG2202100026

0d 5h 40m

2022-09-05 16:34

2022-08-11 11:25

-

-

-

Buy

10

i600

BG2202100029

0d 3h 10m

2022-08-10 11:05

2022-06-16 11:58

-

-

-

Buy

ⓘ The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

その他のメニュー

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit情報

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報を取得できます。Medit Academy、Medit Academy YouTube、Meditヘルプセンター等のMeditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Medit Linkアプリのダウンロード

ウェブから最新のプログラムインストーラーをダウンロードできます。このメニューは、製品パッケージで提供されたインストーラーを紛失した場合やインストーラーが古いバージョンの場合に便利です。


48

注意

Medit Linkはインターネット接続がされている場合、自動更新されます。

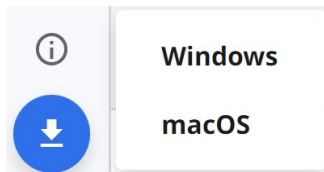

概要

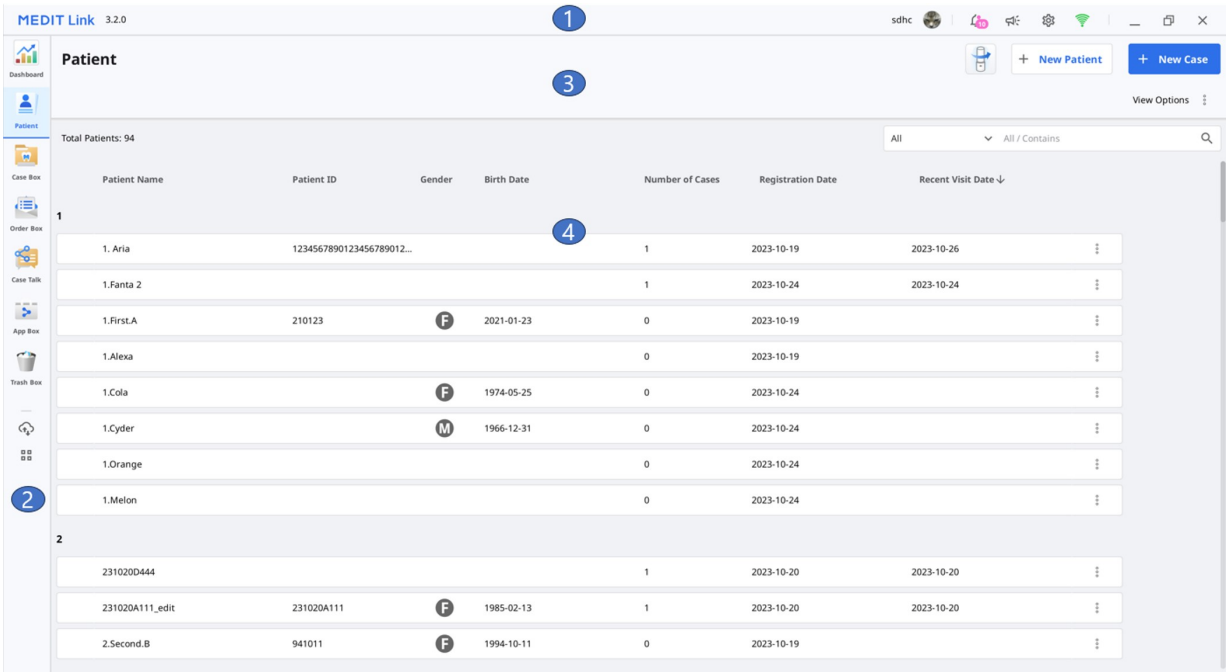

1	タイトルバー	詳細情報については、Medit Linkアプリ>タイトルバーを参照してください。
2	メニュー	詳細情報については、 Medit Linkアプリ>メニュー を参照してください。
3	ツールと機能	詳細情報については、 Medit Linkアプリ>ファイルビューアー および Medit Linkアプリ>表示オプション を参照してください。
4	ケースリスト	詳細情報については、 Medit Linkアプリ>フィルタリングと検索 を参照してください。

下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。

アカウントタイプ		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
歯科医院アカウント	管理者	O	O	O	X	X	O	O	O
	メンバー	O	O	X	X	X	O	O * 復元機能のみ	O
技工所アカウント	管理者	X	X	X	O	O	O	O	O
	メンバー	X	X	X	X	O	O	O * 復元機能のみ	O

タイトルバー

タイトルバーを使用すると、アカウント情報、通知、通知 & 更新、設定、ネットワークステータスなどの機能に素早くアクセスできます。



ユーザー情報

ユーザー情報には、プロフィールの画像、歯科医院または技工所名、メールアドレス、ユーザー名などの基本的なユーザー情報が含まれています。

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

通知

パートナーシップ、注文、作業進行に関連する通知を表示できます。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery 2020-08-20 오후 5:20

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order 2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work 2020-08-14 오후 6:33

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work 2020-08-14 오전 10:15

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | ボックスにチェックを入れると、未読メッセージだけを表示できます。 |
| 2 | いずれかの通知をクリックすると、すぐに関連するケースまたはWebページに移行します。 |

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

設定

設定ダイアログではプログラムを設定できます。



Medit Linkを使用すると、ネットワークに接続されている場合にはすべてのサービス機能をシームレスに使用できます。

Network Status

-  Network speed is good.
-  Network speed is fast enough.
-  Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.
-  Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.
-  Synchronization is in progress. Some case lists may not match.
-  Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

ネットワーク接続が良くない場合は、以下の制限がかかる可能性があります。

- ケースの注文や作成、Case Talkでの共有、クラウドの同期など、一部の機能は制限されます。
- ネットワーク環境の影響のため、サービスの全体的なパフォーマンスが低下します。

この場合、基本的な作業を行うためにオフラインモードを入力し、インターネットに接続されたら必要な機能を使用します。

注意

ネットワーク速度記号は、現在のエリアとAWS (Amazon Web Service) 間の応答速度を示しています。使用しているネットワーク速度を表示しているのではないため、使用しているネットワーク速度は十分であっても、ステータスは悪いと表示される可能性があります。

他の処理で同じネットワークを使用している場合、速度が弱いまたは悪いと表示されることがあり、Medit Linkの全体的なパフォーマンスが悪くなることがあります。この場合、他の処理と一緒にネットワークを共有しないでください。

例えば、「RAWデータのアップロード」機能はネットワーク処理のかなりの部分を占めます。ステータス記号が弱いまたは悪いと表示されている場合には、設定 > RAWデータのアップロードにアクセスし、「自動アップロード」をオフにします。

設定

一般

全般的なシステム設定のオプションを提供します。

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links for 'General', 'Storage Management', 'Set Connected Program', 'Export Options', 'Case Converting Tool', and 'Proxy Option'. The main area displays the following settings:

- Save Folder:** C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/
- Language Settings:** English
- Teeth Labeling:** FDI (selected), US
- Notification:** Allow Notifications (checked)
- Upload Raw Data:** Upload Automatically (checked)
- Quick Scan:** Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information. Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan (unchecked)
- Viewing Options:** Advanced Rendering (checked), Adjust Color Texture (slider)
- Medit User Experience Improvement Program:** We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Buttons for 'About', 'User Guide', 'Apply', and 'Close' are visible.

フォルダの保存	Medit Linkおよび接続されているプログラムで生成された結果を保存するためのフォルダーを特定します。	
言語設定	プログラム用の言語を選択します。	
歯牙ラベリング	FDIとUSのいずれかの歯牙ラベリングシステムを選択します。	
通知	チェックを入れると、プログラムの更新情報についての通知を受信できます。	
RAWデータをアップロード	チェックを入れると、RAWデータはクラウドに自動的にアップロードされます。これは、別のPCで同じアカウントを使用してMedit Linkを使用時にオリジナルのデータをバックアップし、シームレスにスキャンを実行する時に役立ちます。オリジナルデータのクラウドバックアップは、Medit Scan for Clinicsで取得されたデータにのみ適用されます。	
クイックスキャン	フォーム情報を入力する必要なく、下記のスキャン工程をMedit Scan for Clinicsに自動的に表示させるかどうかを選択します。 - 上顎施術前 - 下顎施術前 - 顔面スキャン	
表示オプション	高度なレンダリング	チェックを入れると、3Dモデルはより鮮明でリアルなレンダリングで表示されます。
	色テクスチャの調整	3Dモデルの明るさを調整します。 * 色の結果は、他のソフトウェアで同じデータを開いた場合、Medit Linkとは少し異なって見える可能性があります。
Meditユーザー体験向上プログラム	Meditユーザー体験向上プログラムにご参加ください。 - 当社の製品とサービスの向上のために回収した情報を使用します。 - 個人を特定するような情報は回収しません。	


ログイン後の
デフォルト
ページ

プログラム開始時に表示されるデフォルトメニューを選択します。

- 歯科医院アカウントはPatientとCase Box間で選択可
- 技工所アカウントはIn BoxとWork Box間で選択可

ストレージ管理

ローカルおよびクラウドストレージのスペースを確認および管理します。

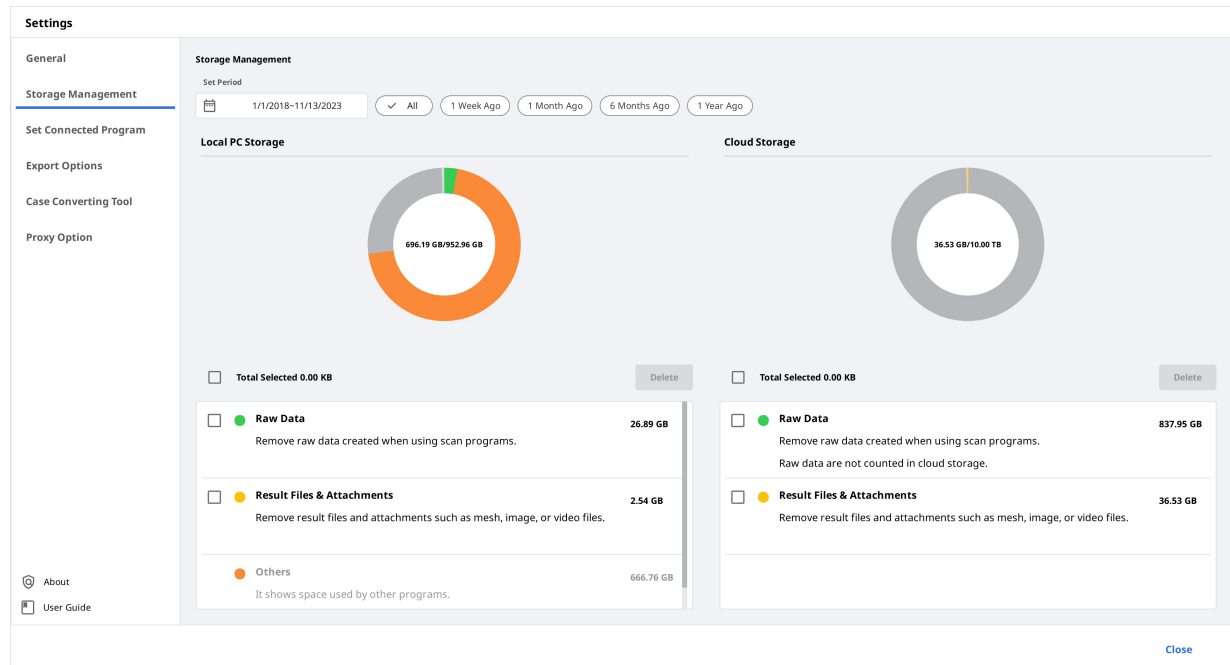

期間の設定

以下の期間設定内で、作成したデータを削除するために特定の期間を設定します。

- すべて: すべてのファイルを表示します。
- 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。
- 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。
- 6か月前: 作成後6か月が経過したファイルを表示します。
- 1年前: 作成後1年が経過したファイルを表示します。

ローカルストレージ

PCストレージスペースを管理します。

RAWデータ	PCから選択したRAWデータを削除します。 すでにRAWデータがクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。
結果ファイルと添付ファイル	PCからメッシュ画像や動画などの結果ファイルや添付ファイルを削除します。 これらのファイルがすでにクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。
その他	システムおよびその他のプログラムを運用するために使用されるファイルを表示します。使用しているPCのストレージを表示します。Medit Linkからこれらのファイルを削除することはできません。
削除	PCから選択したファイルを削除します。


クラウドストレージ

クラウドストレージのスペースを管理します。

RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を守るために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。
結果ファイルと添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
ストレージの購入	スタンダードプランの場合、クラウドストレージを拡張するにはプレミアムプランに登録してください。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、ストレージ容量を空けます。

接続プログラムを設定する

Medit Linkでの統合をサポートするプログラムを管理します。

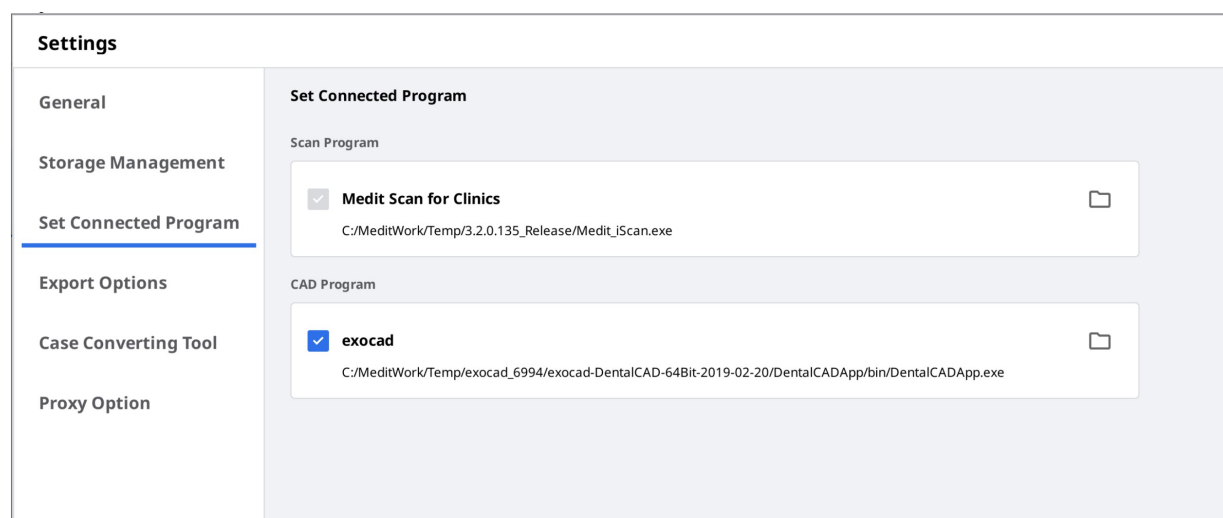

以下のプログラムを接続できます。

	歯科医院アカウント	技工所アカウント
スキャンプログラム	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CADプログラム	exocad	exocad

注意

以下のサービスは、MacOS向けMedit Linkでは利用できません。

- Medit Scan for Labs
- exocad

エクスポートオプション

Medit Linkからファイルをエクスポートする方法を設定します。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:/YHGarn_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply


Close

CADタイプ	設計用に使用するCADプログラムを選択します。 プログラムは追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいた結果を調整します。
ファイルの エクスポート 先	結果の保存先を指定します。
メッシュ形 式	最終のメッシュファイルの形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
圧縮と結 合	ファイルの圧縮:すべての結果を一つのファイルに圧縮します。 個々のメッシュデータの結合:上顎または下顎のすべての結果を一つのファイルに結合します。いくつかのプログラムを使用して複数のファイルでインポートし、作業できない場合、それらを一つに結合し、それらのプログラムで作業ができます。
同じフォル ダまたはファ イルがすで に存在する 場合のオブ ション	対象の場所に同じフォルダ名またはファイル名が存在する場合、ケースのデフォルト操作を選択します。 - エクスポート時に常に確認する。 - 新規ファイルをエクスポートし、既存のファイルに上書きする。現在保存されているファイルは失われる。 - フォルダを作成してファイルをエクスポートする。
フォルダ名 のルール	ファイルのエクスポート時のフォルダ名作成のルールを定義します。 設定されたルールは、フォルダ名に提供され、エクスポートされたファイルは作成されたフォルダに保存されます。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 - 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID - 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID

ファイル名のルール	エクスポートしたファイル名のルールを定義します。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 • 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID • 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID
------------------	--

ケース変換ツール


アカウントの既存のケースをエクスポートまたは他のアカウントからエクスポートされたケースをインポートすることで、異なるアカウント間でケースを移動できます。

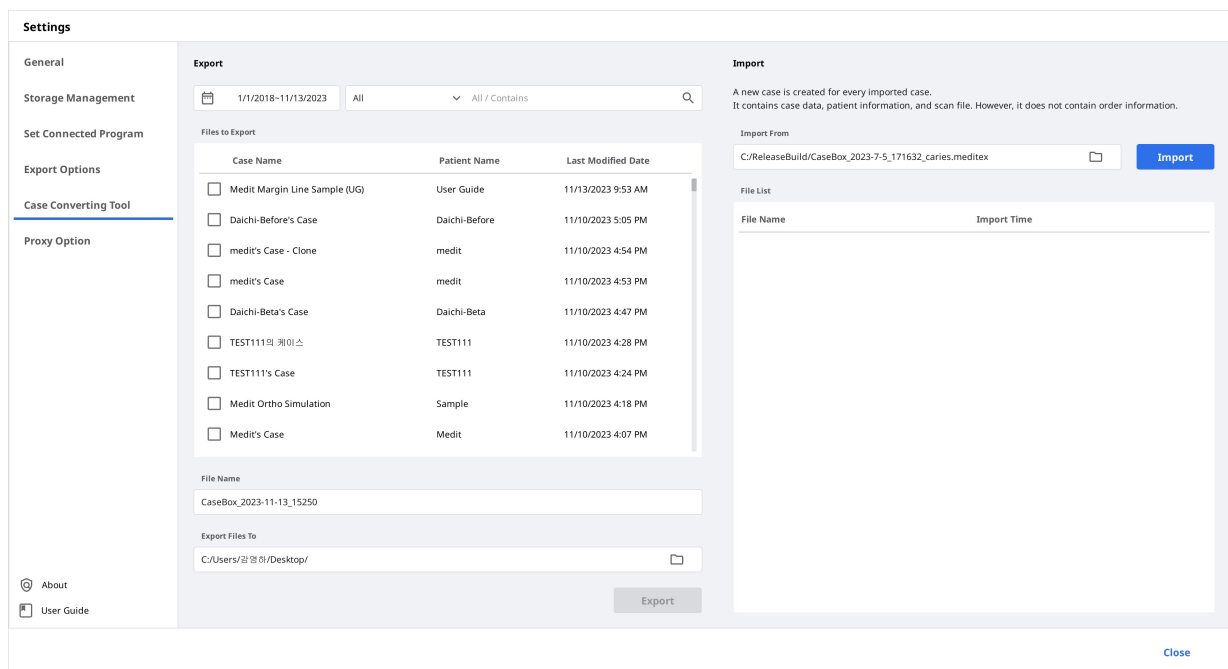

ケースのエクスポート

現在ログインしているアカウントのケースをローカルPCにエクスポートします。

1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

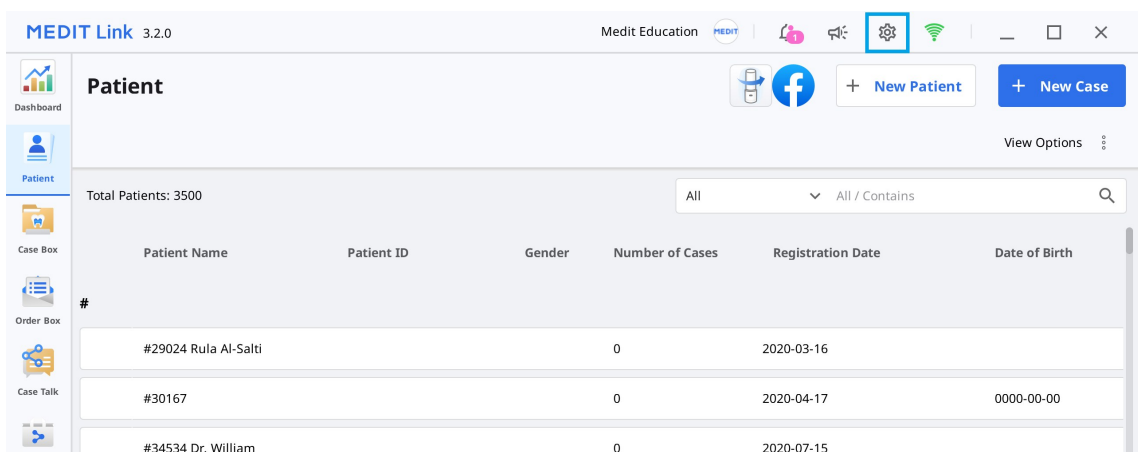

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To
C:/Users/김영하/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. エクスポートセクションで、必要があればエクスポートするケースの期間を設定したり、検索したりします。

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name
☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. 「エクスポートファイル」のリストからエクスポートするケースを選択します。

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. ファイル名フィールドのケース名を編集してファイル名を設定します。
6. 選択済みケースをエクスポートする先のフォルダを設定します。
7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックし、ファイルがエクスポートされたフォルダを開きます。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. エクスポートされたケースは、.meditexファイル形式で保存されます。

ケースのインポート


1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

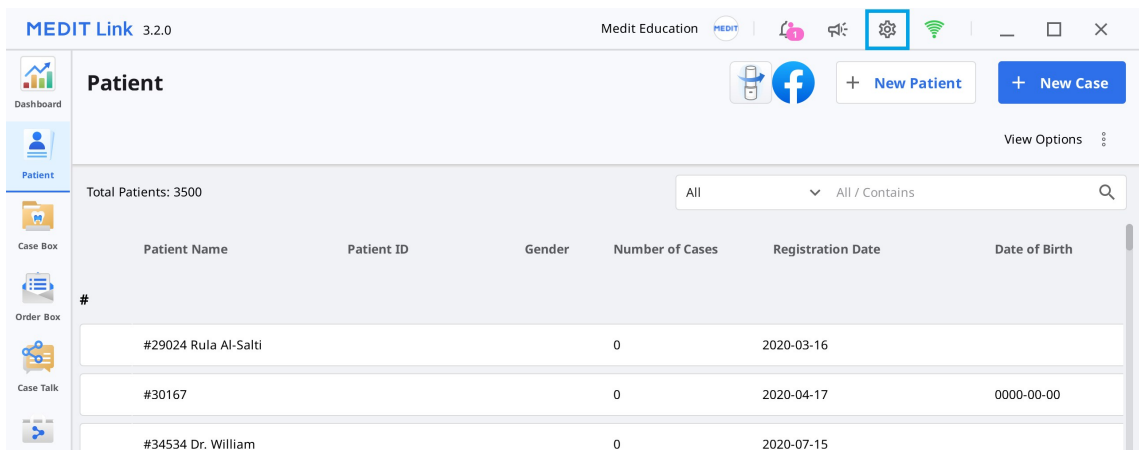


2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

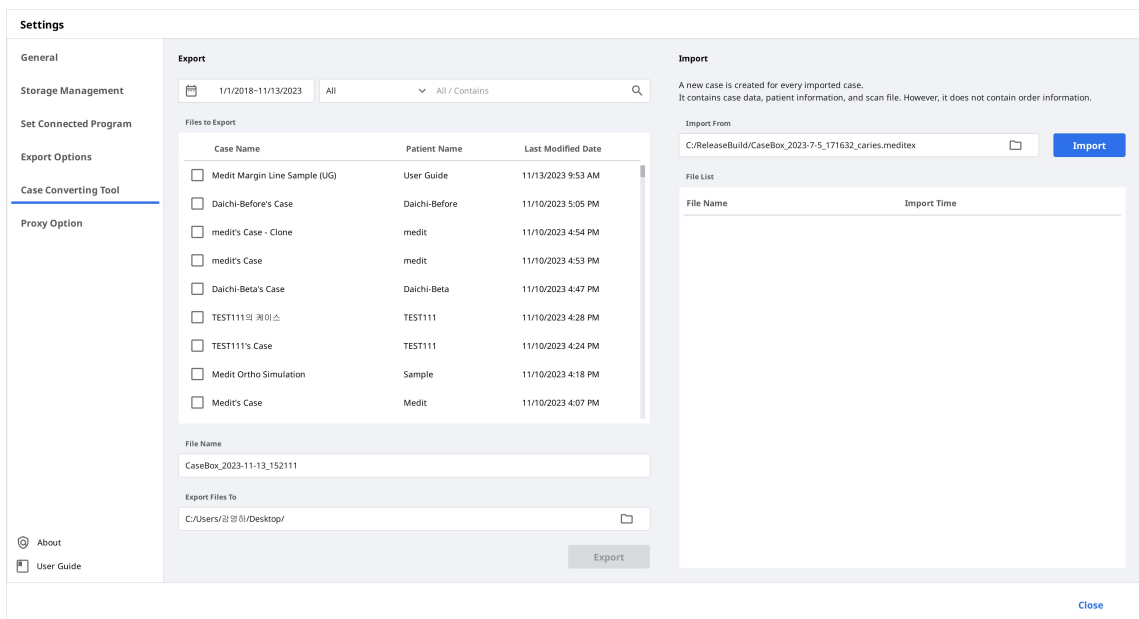

3. インポートセクションで、フォルダアイコンをクリックし、PCでインポートする.meditexファイルを探します。

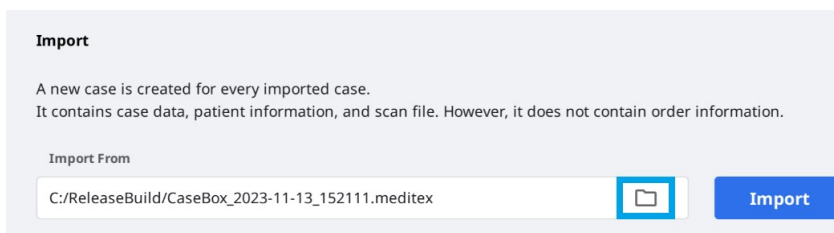

4. 「インポート」ボタンをクリックし、以下のリストでインポートするファイルを確認します。

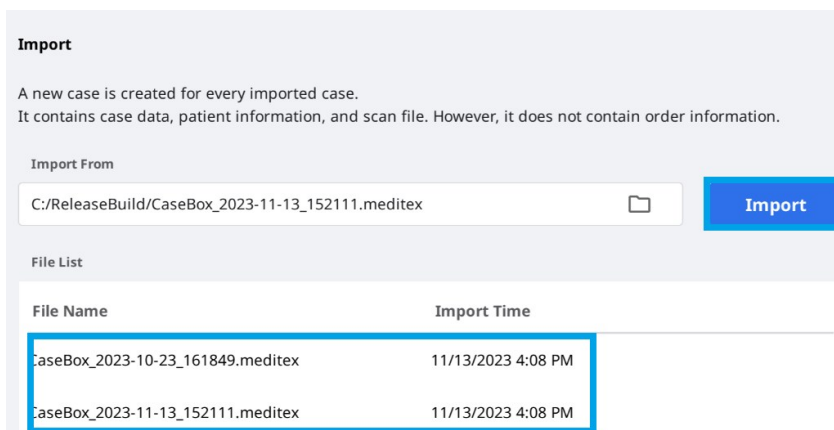

5. インポートしたケースは、Case Box(歯科医院アカウント)またはWork Box(技工所アカウント)にも表示されます。

プロキシオプション

いくつかの限定的なネットワーク環境では、ネットワーク設定を変更できます。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Apply

Close

弊社について

Medit Linkに関する詳細情報を表示します。

About

MEDIT Link *Beta*

v 3.2.0 Build 107

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

ユーザーガイド


Medit Linkのユーザーガイドを取得します。

ユーザーガイドを開くにはインターネット接続が必要です。

メニュー

Dashborad

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートとして確認できます。

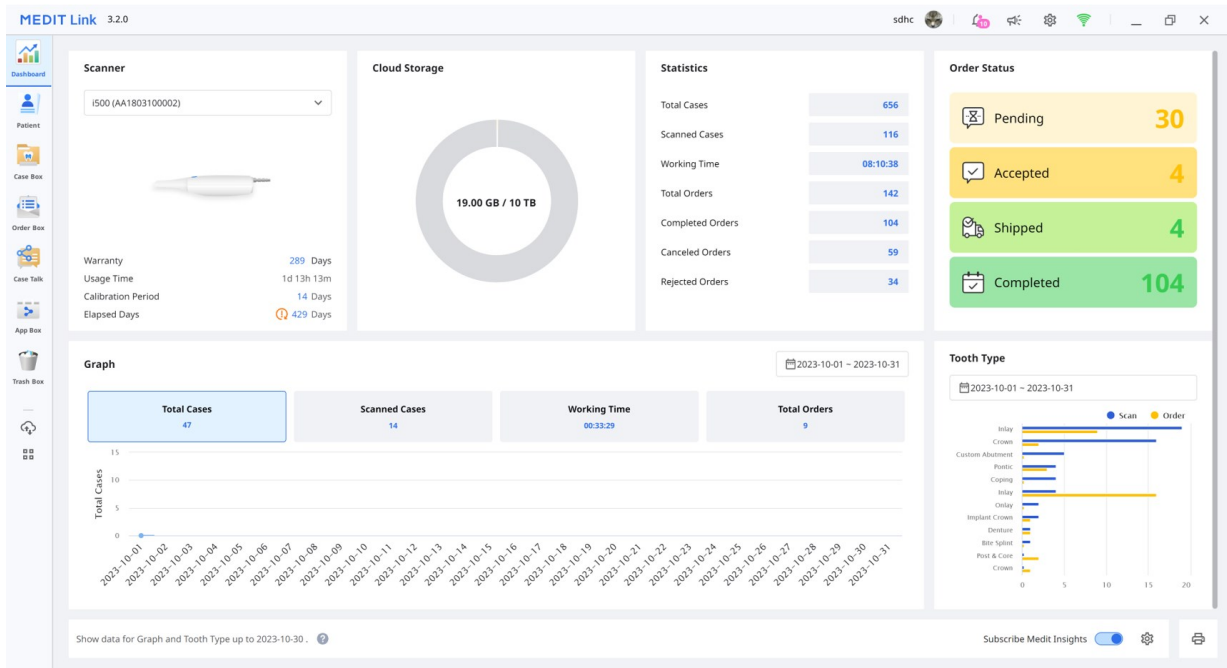

注意

DashboardおよびMedit Insightsに関する詳細情報については、[Medit Linkウェブ>Dashboard](#)を参照してください。

Patient

Patientメニューで患者を追加、編集、削除、または結合できます。

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
Total Patients: 106						
All / Contains						
K k						
KELLY				1	2021-07-02	Scan
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
N n						
newpatient				1	2022-10-13	Scan
O o						
ORG_Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan
R r						

新規患者の追加

1. 「新規患者」をクリックします。

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. 新規患者ダイアログに必要な情報を入力後、「保存」をクリックします。

患者の削除

注意

該当する患者にケースがない場合には患者のみを削除できます。

1. リストから削除する患者を選択します。

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Area Box

+

New Patient

+

New Case

View Options

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	
☒	Temporaries				0	2023-10-04		
☒	T.O.P	키코는		1987-11-04	0	2023-09-07		

2. 「削除」をクリックします。

患者の結合

複数の患者のすべてのケースを一人の患者に結合できます。

1. リストから結合したい患者を選択します。

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Area Box

+

New Patient

+

New Case

View Options

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

2. 「患者の結合」をクリックします。
3. すべてのケースを結合したい対象の患者を選択します。
4. すべてのケースは対象の患者に結合され、その対象の患者の患者情報は維持されます。

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel
Apply

5. 「適用」をクリックして、結合を実行します。

Case Box/Work Box

1 Case name and patient name display.

2 Display of main functions: Order/Scan (Open)/Order button and app icon.

3 Display of available tabs: Form, CAD, File Viewer.

4 Display of case and file management functions.

5 Display of the Form registration UI for CAD program selection.

6 Display of Type/Method/Shade information for the selected tooth.

7 Display of Type/Method/Material/Shade information for the selected tooth.

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

- 1 ケース名および患者名を表示します。
- 2 使用可能な主な機能の表示: 注文/スキャン(開く)/注文ボタンとアプリアイコン
- 3 使用可能なタブの表示: フォーム、CAD、ファイルビューアー
- 4 ケースとファイルの管理用機能を表示します。
- 5 選択済みCADプログラム用のフォーム登録UIを表示します。
- 6 選択した歯番を選ぶためのタイプ/方法/シェード情報を提供します。
- 7 選択した歯に適用されるタイプ/方法/材料/シェード情報を表示します。

Case Box/Work Box中のタブ

フォーム	CAD	ファイルビューアー
------	-----	-----------

フォームタブでは、タイプ、方法、歯番用の材料、スキャンオプション等のスキャン作業に関する基本情報を入力するためのUIを提供します。入力する情報は接続しているスキャンプログラムに送られ、パートナーに発注する際の注文情報として使用されます。	CADタブはCADオプションを設定するためのUIを提供します。 設定した情報は、接続されているCADプログラムに送られます。	スキャンプログラムとCADが生成した結果ファイルを表示します。 ファイルビューアーは、取得または添付されている3Dモデルと2D画像を表示し、管理します。
---	--	--


Case Box／Work Box中のタブ

以下の機能は、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。								
	詳細を見る	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) の同じケースにショートカットを提供します。								
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。								
	メモ&タグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。								
	ケース履歴	ケース履歴に関する詳細情報を提供します。 History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	削除	ケースを削除します。 注文済みケースまたはオフラインで作成したケースを削除することはできません。								
	複製	Case Boxにある現在のケースの複製を作成します。すべてのデータは複製済みケースにコピーされます。 これは、同じ患者のための治療情報を複製または同じ情報またはファイルを使用して追加の発注をする際に便利な機能です。								
	添付	さまざまな形式でファイルを添付します。								
	エクスポート	スキャンまたはCAD結果ファイルをローカルPCにエクスポートします。ファイルのエクスポート時には希望するファイル形式を選択できます。 エクスポートされたファイルは、さらに作業を行うためにCADとCAMソフトウェアで使用できます。								

	共有	共有するためにリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。 誰とでもまたは特定の人だけと自由にリンクを共有できます。個人情報保護のために、PINコードまたはリンクの有効期限を設定できます。
	技術サポートへの問い合わせ	サポートリクエストを提出するにはヘルプセンターページに移動します。

Order Box/In Box

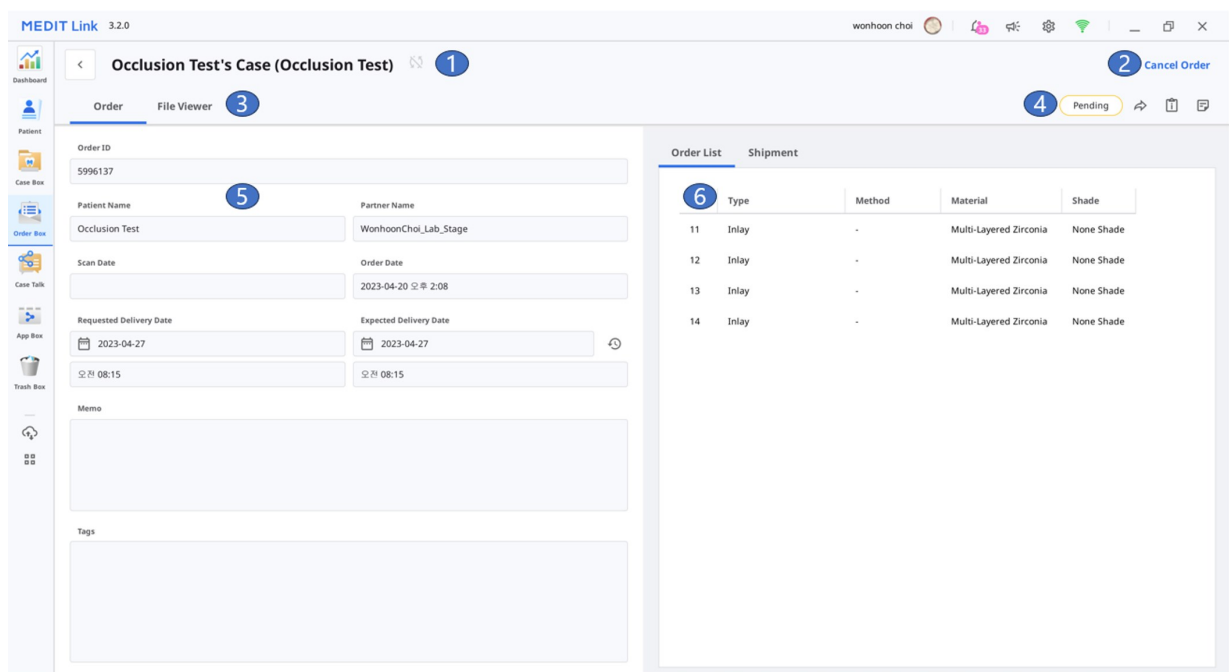

1	ケース名および患者名を表示します。
2	注文管理(承認/キャンセル、納品/受領)用の機能を提供します。
3	使用可能なタブの表示: 注文、ファイルビューアー
4	ケースおよびファイルの管理用の機能を表示します。ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
5	注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
6	注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。

Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文番号、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ等の注文に関する詳細情報を確認します。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。ファイルビューアーは取得したまたは添付された3D模型や2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有ケースリストを確認できます。



注意

「Case Talk」サービスにはインターネット接続が必要です。

The screenshot shows the Medit Link Case Talk interface. At the top, there's a header with 'MEDIT Link 3.2.0' and a user profile 'wonhoon choi'. Below the header, there's a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk (selected), App Box, and Trash Box. The main area displays a table of shared cases. The table has columns: Case Talk Name, Patient Name, Form Information, Scanned Date, Shared Date, and Expiration Date. There are three rows of data.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** f* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。

App Box

App Boxでは基本的なスキャンワークフローを補完するさまざまなアドオンプログラムを提供し、効率性を向上させます。

App Boxは、Meditが開発したオリジナルアプリなどの「Medit Appsアプリ」と3Dプリント、CAD/CAMソフトウェアなどデジタル歯科の他の分野のMeditパートナーと連携しているアプリである「Partner Apps」で構成されています。

Medit AppsとPartner Appsから使用可能なアプリをダウンロードすると、歯列矯正器具を作成、スキャンデータの分析、コンサルテーション中の支援や作業処理の合理化ができます。

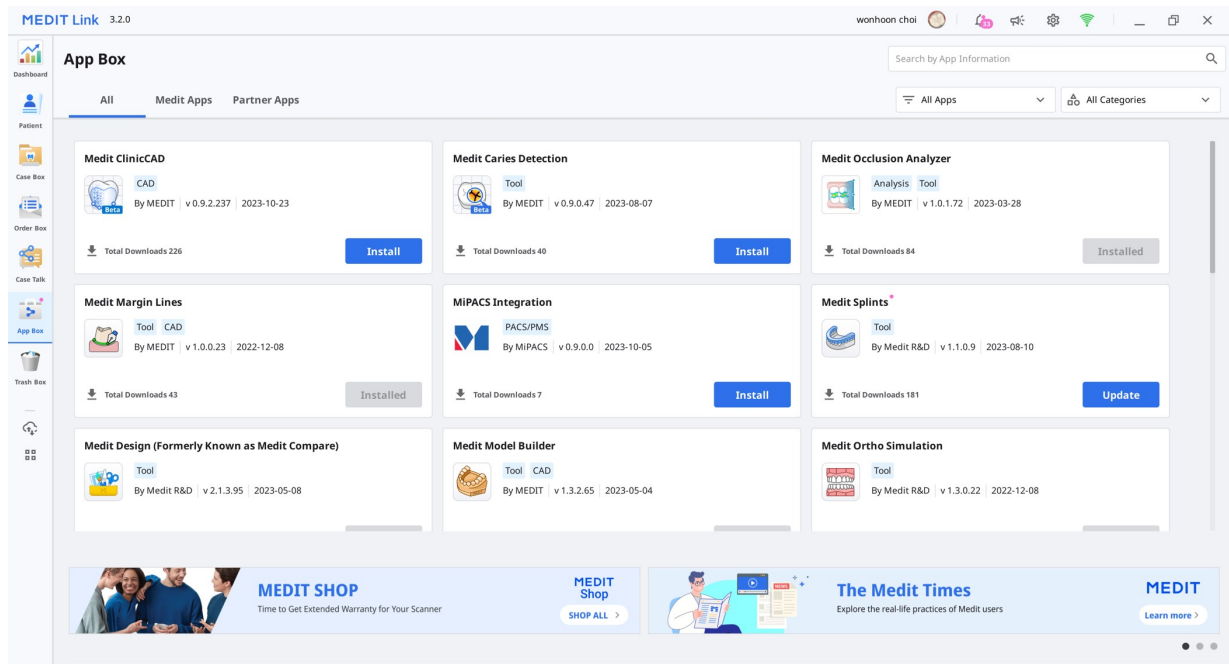

Trash Box

Trash Boxは一時的に削除済みケースを保存します。Trash Boxにあるあらゆるケースは、復元するか、永久に削除が可能です。

⚠ 注意

Trash Boxから削除されたデータは、PCやサーバーから永久に削除され、復元することはできません。

Trash Box

Restore | Selected Cases: 0

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

ケース同期マネージャー

ケース同期マネージャーを使用すると、Medit Linkのケースをアップロードしたり、ダウンロードしたりできます。クラウドに複数のケースをアップロードすることも、PCにダウンロードすることも可能です。

[illegible]

アップロード

合計ケース数/選択済みケース数	アップロードする必要があるすべて/選択したケース数を確認します。
すべてをアップロード	すべてのケースをクラウドにアップロードします。
すべてをキャンセル	すべてのアップロードリクエストをキャンセルします。
	ケースをクラウドにアップロードします。
	ケースのアップロードをキャンセルします。
	ケースのアップロードを再試行します。

ダウンロード


合計ケース数/選択済みケース数	ダウンロードする必要があるすべて/選択したケース数を確認します。
すべてをダウンロード	すべてのケースをPCにダウンロードします。
すべてをキャンセル	すべてのダウンロードリクエストをキャンセルします。
	ケースをPCにダウンロードします。
	ケースのダウンロードをキャンセルします。
	ケースのダウンロードを再試行します。

Medit情報

My Info、Partners、MembershipなどMedit Link Webでのみ利用できるメニューに直接移動できます。
Medit Link Webメニューの詳しい説明については、Medit Link > Medit Link Web >
のPartners、Membership、My Infoを参照してください。

Meditのオンラインストア、Medit Shopにアクセスして、スキャナーの保証延長やスキャナーバックパックなどのMedit商品を購入いただけます。

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報も取得できます。Meditヘルプセンター、Medit Academy YouTubeチャンネル、Medit Academyオンライン教育プラットフォーム等Meditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。

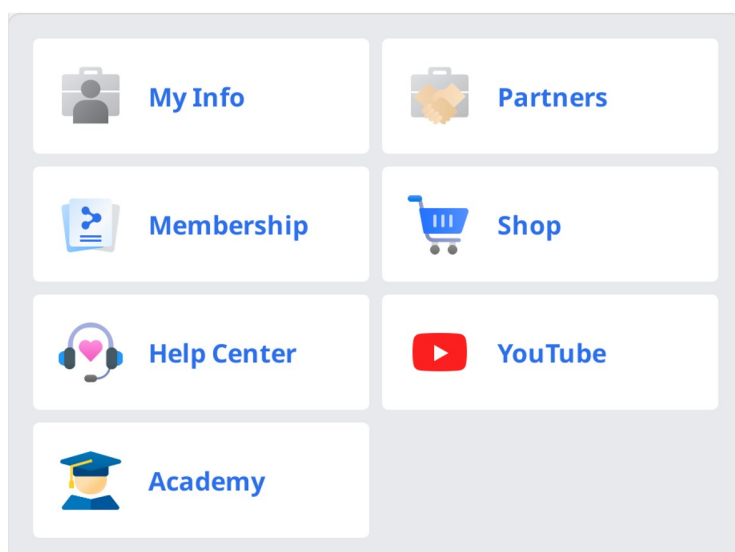

ファイルビューアー

ファイルビューアーは、Medit Linkにリンクしているプログラムやユーザーが添付したデータから取得したデータを含む、さまざまなデータをグループ化および表示します。


データの表示/非表示、不透明度の調整、データの削除等の基本的な管理機能を提供します。

以下の形式のファイルプレビューをサポートしています。

- 3Dデータ: STL、OBJ、PLY
- 2D画像: PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 動画ファイル: MKV、MP4、AVI、WMV

データツリー

データツリーにあるケースのすべてのデータをグループ化および表示できます。データツリーのデータの表示/非表示、透明度の調整、データの削除もできます。

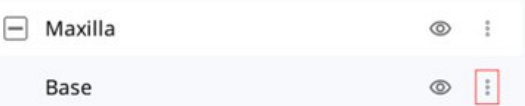	表示/非表示	データを表示または非表示にできます。
	不透明度	データツリー上のデータのの一つをクリックすると、スライダーが表示されます。スライダーを動かして表示データの不透明度を調整できます。 
	詳細	詳細アイコンをクリックすると、追加で使用可能な機能が表示されます。  • このみを表示: 対応するデータのみを表示し、その他のすべてのデータを非表示にします。 • 非表示: データを非表示にします。 • 複製: データをコピーし、添付されているグループに追加します。 • エクスポート: 選択したファイルをエクスポートします。 • 名前の変更: データ名を変更します。 • 削除: データを削除します。





注意

オンライン時にデータ名の変更ができます。

模型コントロールツール

3D模型のコントロール

	パン	模型を動かします。
	回転	模型を回転させます。

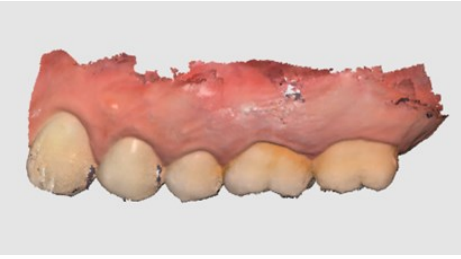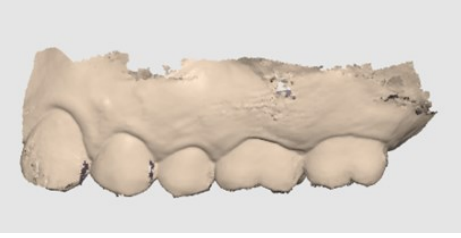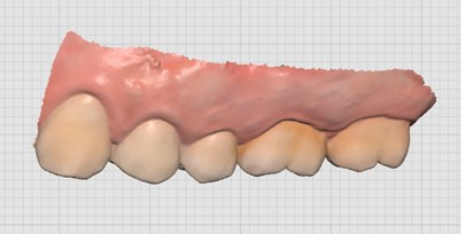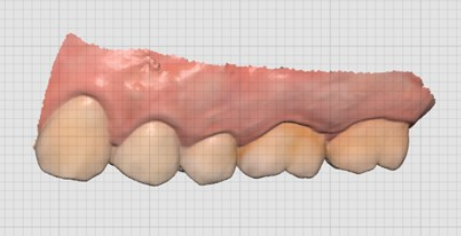	拡大/縮小	模型を拡大/縮小します。
	ズームフィット	画面中央に模型を配置します。
	模型表示モード	テクスチャオン 実際のテクスチャの色でデータを表示します。 
		テクスチャオフ データを単色で表示します。 
	グリッド設定 (mm)	グリッドオン 背景にグリッドを表示します。 
		オーバーレイオン 模型上にグリッドをオーバーレイします。 
		グリッドオフ グリッドを非表示にします。

2D画像コントロール


	次/前の画像	画像間で移動します。
	編集	画像を編集します。
 	画面の切り離し/貼付け	画像画面を切り離し、希望する位置に画像を調整できます。 画面のサイズを変更できます。 画面がオリジナルの場所に戻ると、デフォルトサイズになります。

機能ツール

画像撮影とメモ


現在の画面を2D画像で撮影し、そこに描いたり、メモを追加します。

メモ付きのファイルを保存し、参照として送信できます。

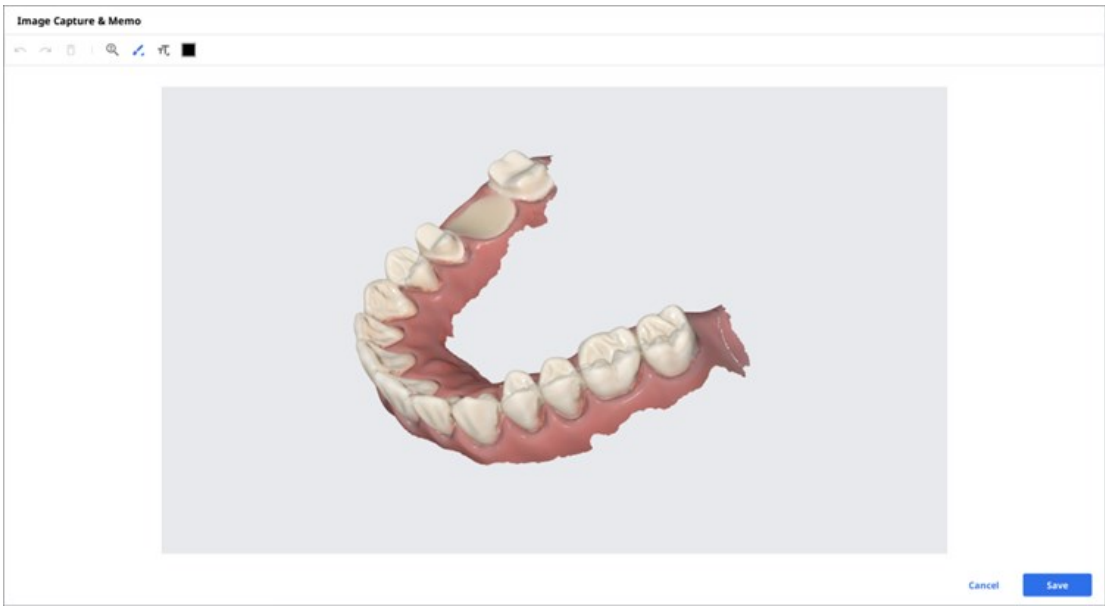

矯正撮影


現在の視線方向および現在の視線方向から上/下/左/右の画像を撮影します。

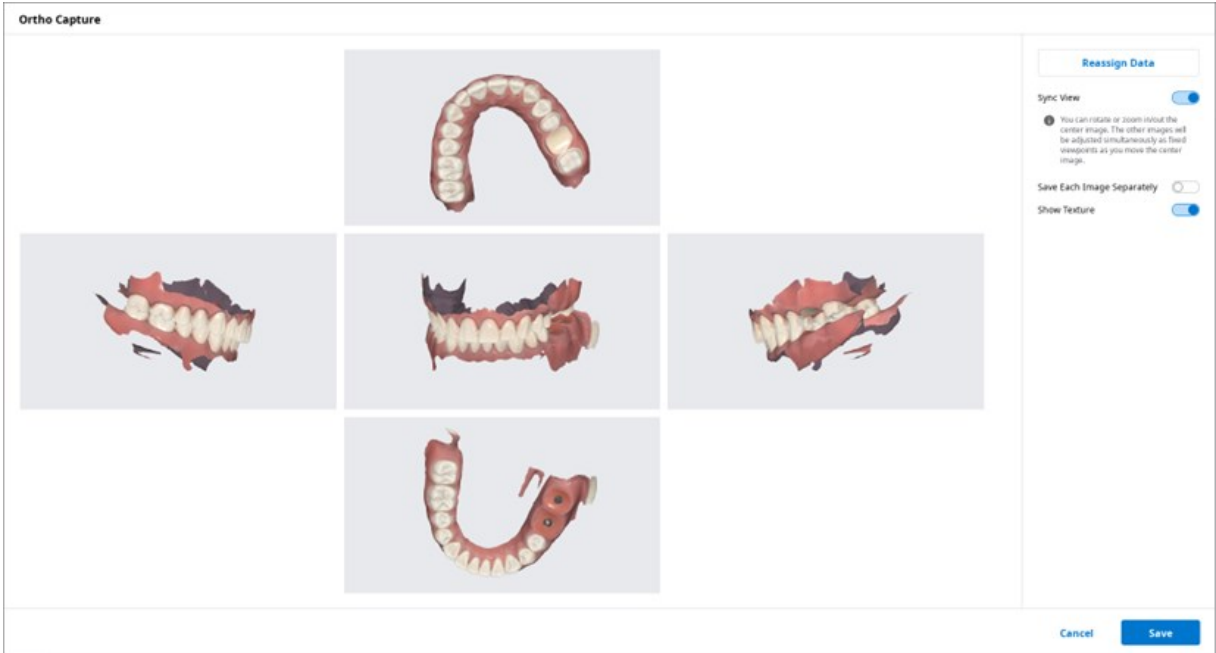

ビューの同期	オンの場合、中央の画像を回転または拡大/縮小できます。その他の画像は、中央の画像を動かしながら固定した視点として同時に調整されます。 オフの場合、すべての画像を個別にパン、回転、または拡大/縮小できます。
各画像を個別に保存	各画像を高解像度で保存します。
テクスチャを表示	模型のテクスチャをオン／オフにします。

データの再割り当て機能で上顎/下顎のデータを変更します。変更したデータを使用して、矯正撮影の結果画像を作成し、活用できます。

データの再割り当て

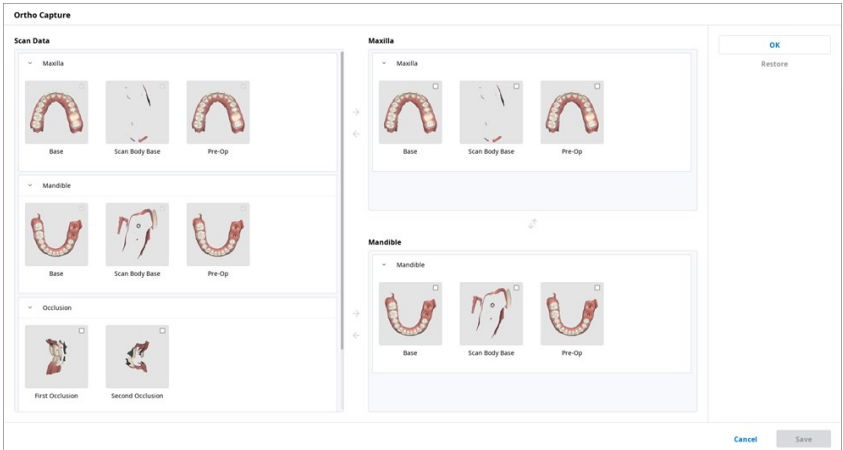

- スキャンデータ: ケースのスキャンデータをすべて表示します。
- 上顎: 上顎の選択したデータが表示されます。
- 下顎: 下顎の選択したデータが表示されます。


歯牙充填

3Dメッシュデータで歯牙を充填します。



トリミング


トリミングでは、データを編集するさまざまなツールを提供しています。

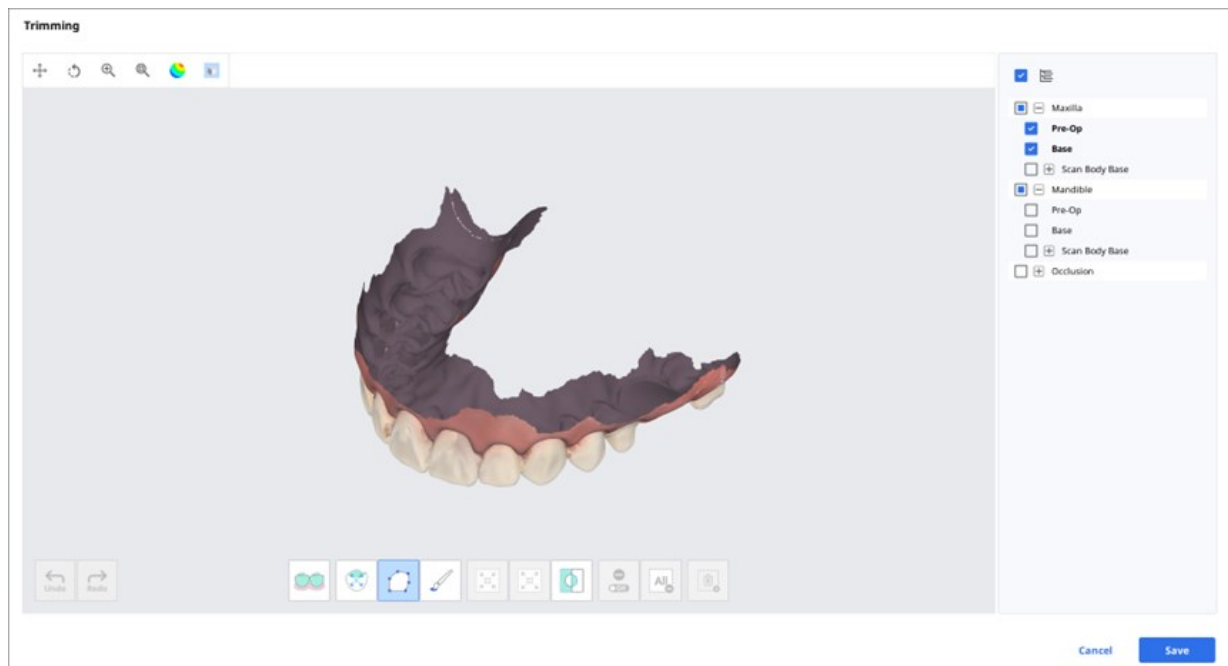

選択した3Dメッシュデータは、画面下部にあるさまざまなツールを使用して編集できます。

選択		スマートフェイス選択	歯肉部分以外の歯列弓/アーチの歯全てを自動で選択します。 注意 この機能は「GPU利用」オプションがオンになっているMedit Scan for Clinicsを使用して取得したスキャンデータでのみ利用できます。
		スマートシングルツール選択	1回クリックして、1本の歯の領域を自動選択します。歯をクリックまたはドラッグできます。
		多角形選択	画面上で描いた多角形内のすべてのものを選択します。
		ブラシ選択	画面上に手書きで描かれたパス上のすべてのものを選択します。前面のみが選択されます。ブラシは異なる3つのサイズがあります。
選択領域の調整		選択領域の縮小	ボタンを押すたびに選択領域が縮小されます。
		選択した領域を拡大	ボタンを押すたびに、選択領域が拡大されます。
		選択済み領域を反転	選択領域を反転します。
選択解除		選択/選択解除	オンの場合、様々なツールを使い、選択を解除します。
		すべての選択を消去	すべての選択領域を解除します。
		選択済み領域を削除	選択領域からデータを削除します。

1. 領域選択ツールでトリミングする領域を選択します。

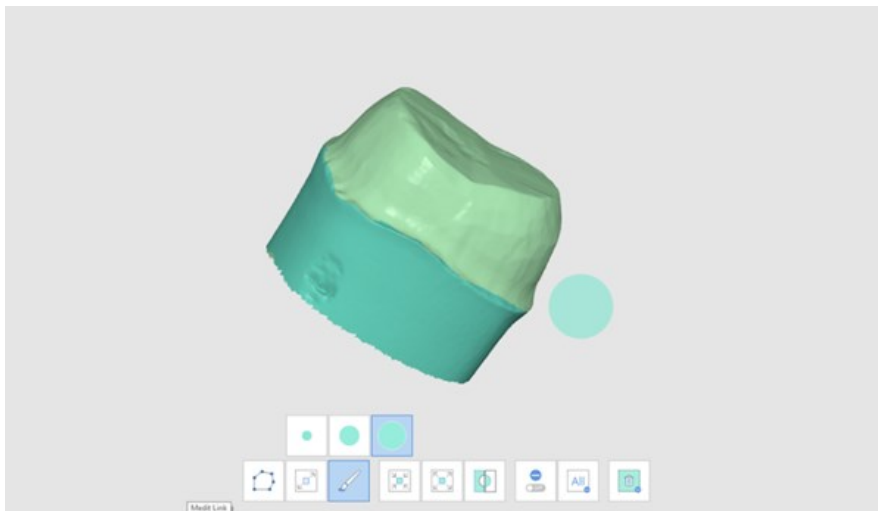


🔍 注意


多角形トリミングツールは画面に描画された多角形内のすべてのものを選択し、ブラシトリミングツールは前面の顔面データのみを選択します。

2. 以下の3つのツールを使用して選択を反転、縮小または拡大できます。


- 選択した領域を反転させる

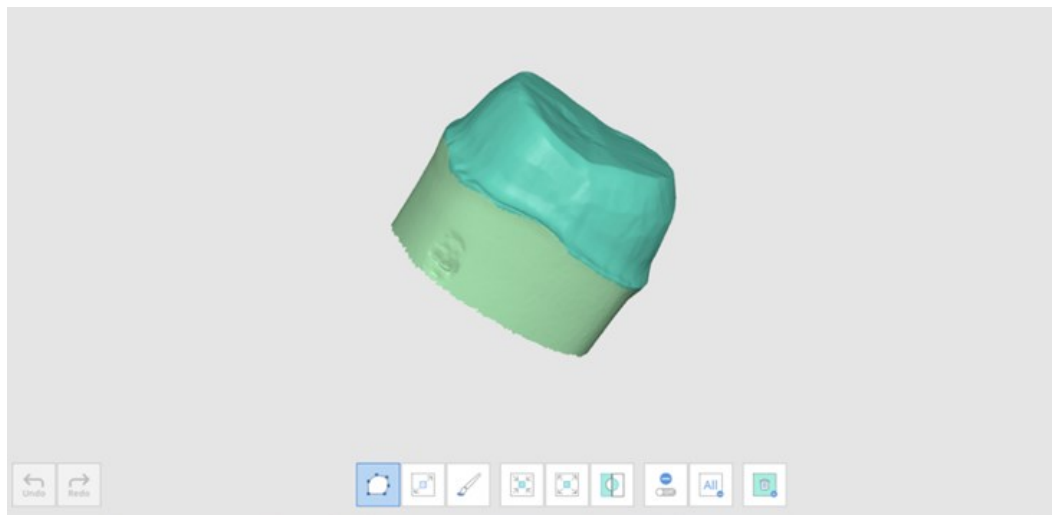

- 選択領域の縮小

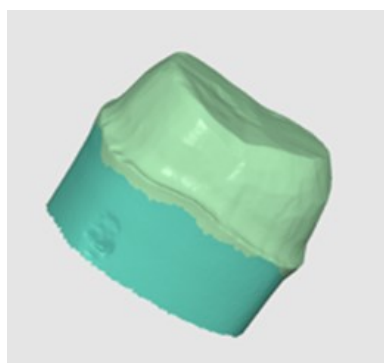


- 選択した領域を開く

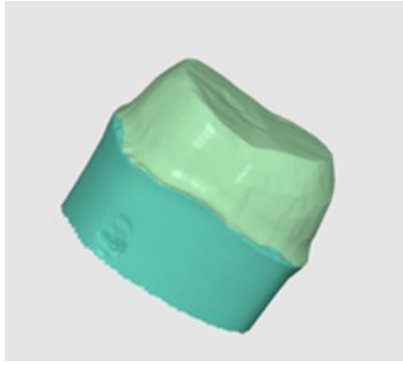

3. 選択領域削除ツールを使用して選択領域の選択解除ができます。


咬合アライメントの最適化

咬合整列を最適化します。対象データを選択し、咬合整列を調整できます。

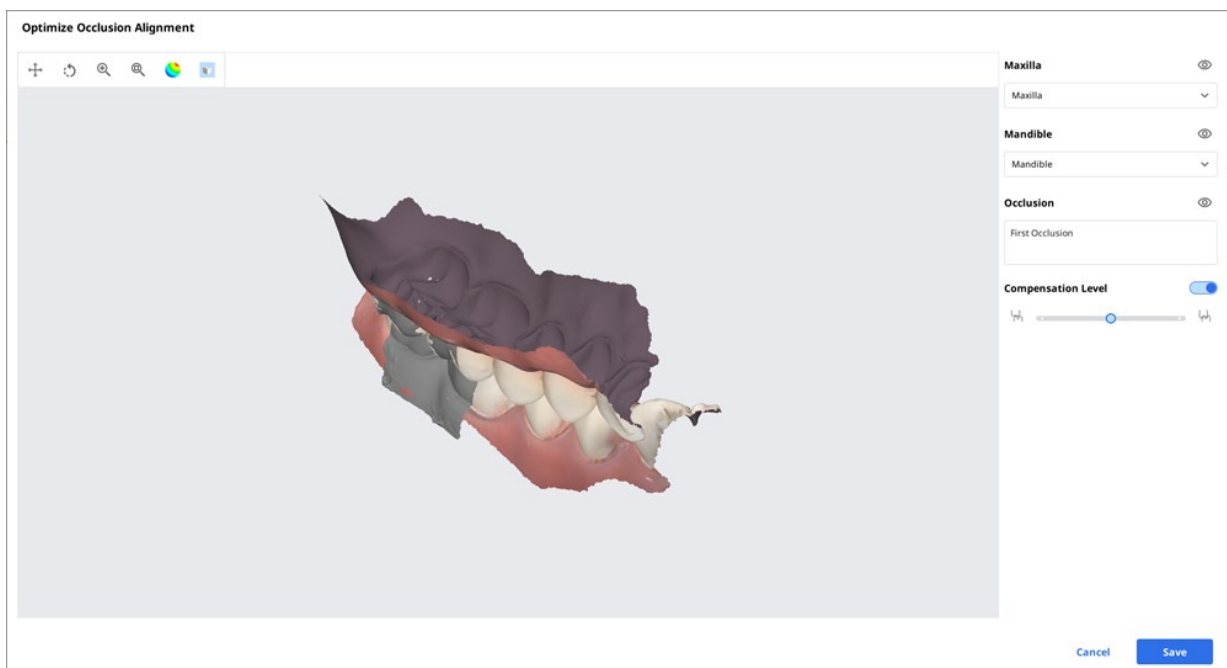


補正レベル

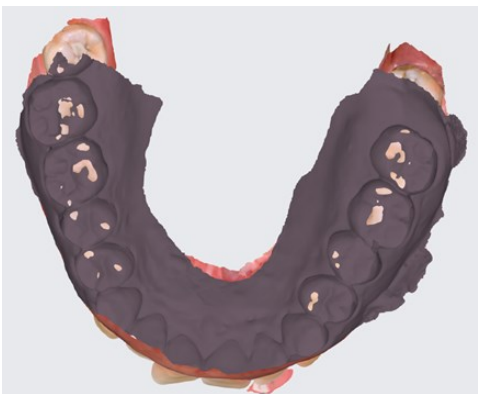

中	Compensation Level I_{p1}  I_{p2}	
高	Compensation Level I_{p1}  I_{p2}	
オフ	Compensation Level I_{p1}  I_{p2}	

下顎運動

Medit Scan for Clinicsで録画された下顎運動を再生し、上下の歯列間の動的な咬合の当たり具合を確認できます。

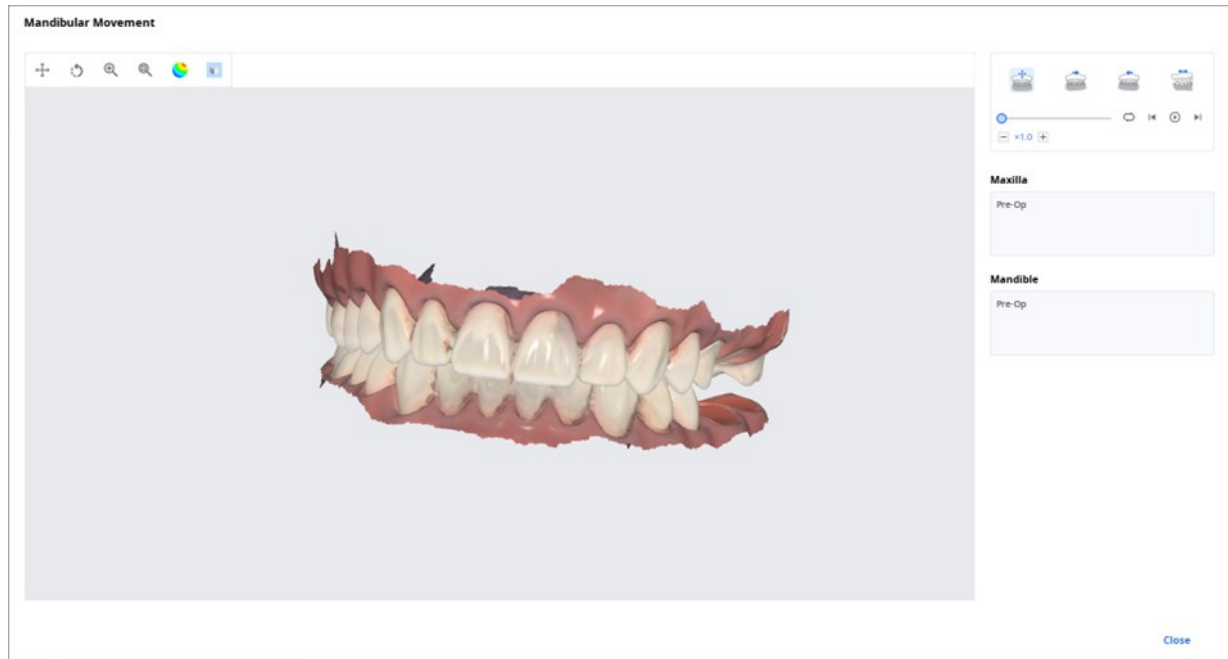

	自由運動	下顎の自由運動の録画を再生します。
	左水平運動	下顎の左への運動の録画を再生します。
	右水平運動	下顎の右への運動の録画を再生します。
	前方運動	下顎の前方運動の録画を再生します。

ファイルビューアーの複数の咬合データの管理

Meditスキャンアプリケーションから複数の咬合データ結果を取得できます。

Medit Linkは、「ファイルビューアー」を通しての結果を管理できる機能を提供しています。

複数の結果の管理方法


Medit Scan for Clinicsから複数の咬合結果を取得時に、Medit Linkは結果を選択できるオプションを提供しています。

結果リストは、名前別にリストアップされ、一つの項目を選択できます。

選択したモデルは、「データツリー」および「モデル表示領域」で表示されます。



リストを折りたたみ、矢印アイコンを使用して項目を変更できます。

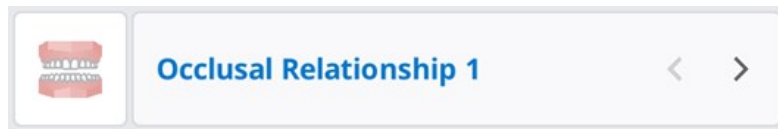

表示オプション

表示オプションを変更して、Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box内のケースリストのレイアウトをカスタマイズできます。

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

ステータスフィルター

ケースのステータスを表す各フィルターを表示または非表示にします。非表示ステータスフィルターでは、Case Box/Work Box/In Box/Order Box中で画面に表示されません。

ステータスフィルターを使うと必要なケースを簡単に探すことができます。

- 表示したいステータスをクリックして、そのステータスのケースのみを表示できます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

各Boxでは、以下のフィルタリングオプションを利用できます。

Box	ステータスフィルター
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

表の項目

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box中のケースリストに表示する項目を選択します。ユーザーが見やすいように、リスト表示の表の項目順を変更または表の幅を調整できます。

各Boxでは、以下の表の項目を利用できます。

Box	表の項目
Patient	患者名/患者ID/性別/ケース数/登録日/生年月日
Case Box	ステータス/ケース名/生年月日/フォーム情報/最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
Order Box	ステータス/ケース名/患者名/スキャン日/注文日/技工所名/配送希望日/最終変更日
In Box	ステータス/ケース名/注文日/配送希望日/最終変更日/歯科医院名

Work Box	ステータス/ケース名/患者名/フォーム情報/最終変更日/配送希望日/スキャン日/歯科医院名/注文日
----------	---

表示タイプ

Case Boxでの表示タイプをギャラリー表示とリスト表示間で変更します。

各Boxでは、以下の表示タイプオプションを利用できます。

Box	表示タイプオプション
Patient	リスト表示
Case Box	リスト表示/ギャラリー表示
Order Box	リスト表示
In Box	リスト表示
Work Box	リスト表示

グループ化

グループ化オプションを選択し、選択したオプションでリスト内のケースを分類し、並び替えます。

各Boxでは、以下のグループ化オプションが利用できます。

Box	グループオプション
Case Box	なし/患者名/スキャン日/注文日
Order Box	なし/スキャン日/注文日/配送希望日
In Box	なし/注文日/配送希望日
Work Box	なし/配送希望日

注意

グループオプションは、Patient、Case Talk、Trash Boxでは利用できません。

並び替え

並び替えオプションを選択して、選択したオプションに従ってリスト内のケース順を変更します。

各Boxでは、以下の並び替えオプションが利用できます。

Box	グループ化	並び替えオプション
Patient	-	患者名/患者ID/生年月日/登録日/ケース数
Case Box	なし	患者名/最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	患者名	最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	スキャン日	患者名/最終変更日/注文日/技工所名
	注文日	患者名/最終変更日/スキャン日/技工所名
Order Box	なし	患者名/スキャン日/注文日/配送希望日/技工所名
	スキャン日	患者名/注文日/配送希望日/技工所名
	注文日	患者名/スキャン日/配送希望日/技工所名
	配送希望日	患者名/スキャン日/注文日/技工所名
	なし	患者名/注文日/納品希望日/歯科医院名

In Box	注文日	患者名/スキャン日/配送希望日/歯科医院名
	配送希望日	患者名/注文日/歯科医院名
Work Box	なし	患者名/最終変更日/納品希望日/歯科医院名
	配送希望日	患者名/最終変更日/歯科医院名


注意

並び替えオプションはCase TalkとTrash Boxでは利用できません。

フィルタリングおよび検索

患者別フィルタリング

患者名別にケースをフィルタリングし、表示します。作業する必要がある患者のみをフィルタリングしてリストを作成できます。

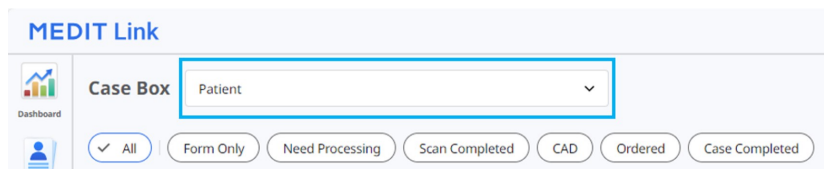


MEDIT Link

Case Box: Patient

Filters: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed

1. 患者の名前を入力します。

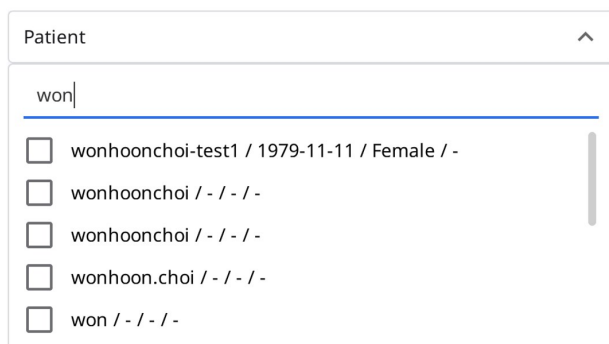


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 以下の検索結果から患者を選択します。

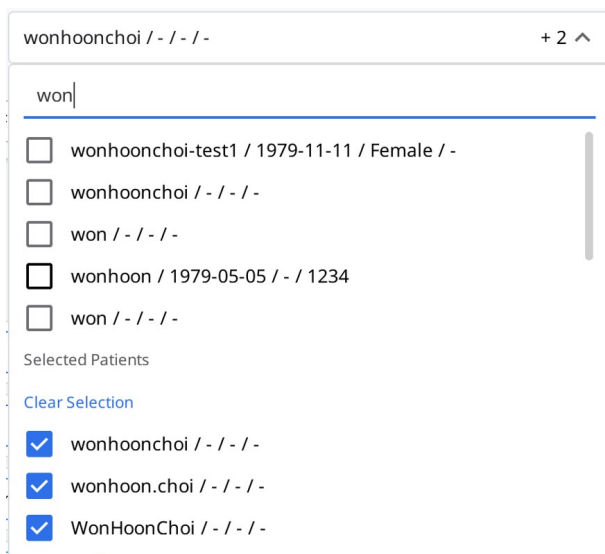

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されます。

Trash Box(歯科医 院)	すべて、ケース名、患者名、技工所名、削除者
Trash Box(技工 所)	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、削除者

検索条件を選択し、「含む」および「等しい」条件指定で選択できます。

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

ケースの作成／編集／複製／削除

ケースの作成

Case Box(歯科医院)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

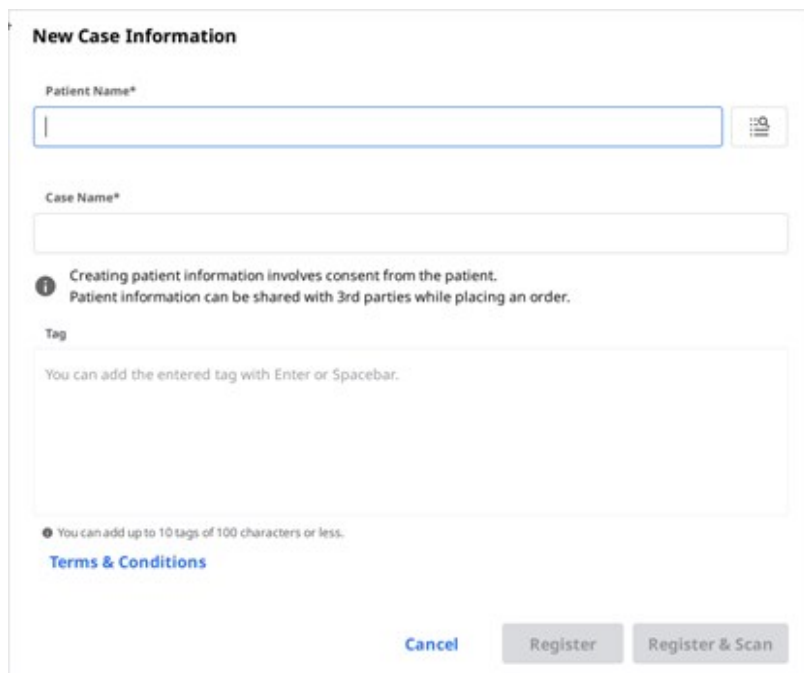


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a dropdown icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less.", a link for "Terms & Conditions", and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. 患者名やケース名などの基本情報を入力します。
 - 患者リストにない名前を入力する場合、新規患者として追加されます。
 - 患者リストにある名前を入力する場合、リストから名前を選択できます。
 - 既存の患者のケースを登録する場合、患者リストアイコンをクリックし、既存の患者を選択します。



- 患者リストダイアログで、新規患者を登録または既存の患者に関する情報を編集できます。

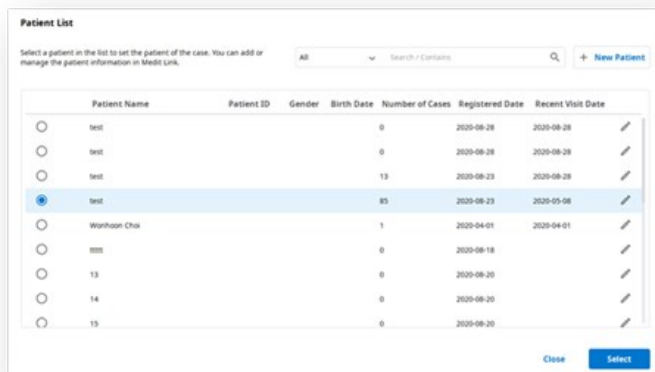

The "Patient List" dialog shows a table of existing patients. The table has columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. A search bar and a "New Patient" button are at the top. A "Select" button is at the bottom right.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhuan Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

3. ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 「登録&スキャン」をクリックし、ケース登録を完了し、すぐにスキャンに進みます。
 - 登録: メインページにリダイレクトされます。これは複数のケースを登録する場合に便利です。
 - 登録&スキャン: フォームタブに移動し、ケースのフォーム情報を登録します。

Work Box(技工所)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a form titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:

- Clinic Name***: A dropdown menu.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Register".

2. 歯科医院名を入力または選択します。
3. 患者名とケース名を入力します。ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 作業の完了日を考慮して納品予定日を入力します。
5. ケースを登録後、メインページにリダイレクトされます。

ケースの編集

Case Box(歯科医院)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

The screenshot shows a form titled "Edit Case Information". It contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field containing "Test Occlusion". To its right is a search icon.
- A green checkmark and text: "Test Occlusion 00010101" is selected.
- Case Name***: A text input field containing "mandibular movement - Clone - Clone".
- An information icon and text: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- A link: "Terms & Conditions".
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Apply".

2. 「検索」アイコンをクリックして、患者名を変更します。直接編集できないことにご注意ください。その代

わり、現在の名前を入れ替えたい患者名を探し、リストから患者情報を編集できます。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

3. 現在の名前を置き換えたい患者名を確認します。
4. 新規患者を作成するために、「新規患者」ボタンを押します。
5. 「編集」ボタンを使用して、患者に関する登録情報を変更します。
6. 「適用」をクリックして、プロセスを終了します。

Work Box(技工所)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

2. 編集完了後に「適用」をクリックします。

注意

In Boxの注文を通して受領したケースの情報を編集することはできません。

ケースの複製

Case Box(歯科医院)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. 新規ケースに複製したい情報の種類を求められます。

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. フォーム情報だけ、またはすべてのデータを複製するかどうかを選択します。
4. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。

Work Box(技工所)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. すべてのデータを複製して、新規ケースを作成します。
3. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。

ケースの削除

ケースの削除(歯科医院および技工所)

1. 「削除」アイコンをクリックします。



2. 「OK」をクリックして、ケースを削除します。

Warning
 Do you want to delete the case?

Cancel OK

3. 削除されたケースは、Trash Boxに移動し、必要があれば取り戻せます。

フォーム情報

接続しているプログラムおよび治療タイプに基づきフォーム情報を入力できます。

入力する情報は、スキャンまたはCADプログラムでの作業および注文のための基本情報として使用されます。

Case Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 歯または歯列弓/アーチでの治療情報のどちらを入力するか選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
3. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

CADタブの入力

1. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
2. 歯番/アーチ/ダイ番号を選択します。
3. 詳細なオプションおよびCADオペレーションのための設定を定義します。
4. 「OK」をクリックして、設定を保存します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
5. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

Work Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 使用するスキャンプログラムを選択します。
2. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
3. 選択したスキャンプログラムにより方法が異なる可能性があります。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
歯	O	O
歯列弓/アーチ	O	O
フレキシブルマルチダイ	X	O
マルチダイ	X	O

4. スキャンプロセス用の歯、歯列弓/アーチ、またはダイ番号を選択します。
5. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、自動的にリストに登録されます。
6. 「保存」をクリックし、登録を保存します。


CADタブの入力

1. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ

2. 歯番/アーチ/ダイ番号を選択します。
3. 詳細なオプションおよびCADオペレーションのための設定を定義します。
4. 「OK」をクリックして、設定を保存します。
 - 選択した情報は、自動的にリストに登録されます。
5. 「保存」をクリックします。

歯をブリッジにつなぐ

同じ材料が複数の隣在歯に適用されている場合には、複数の歯をブリッジにつなげることができます。選択した歯のそばにあるブリッジアイコンをクリックし、歯をつなげるまたはつなげないを選択できます。

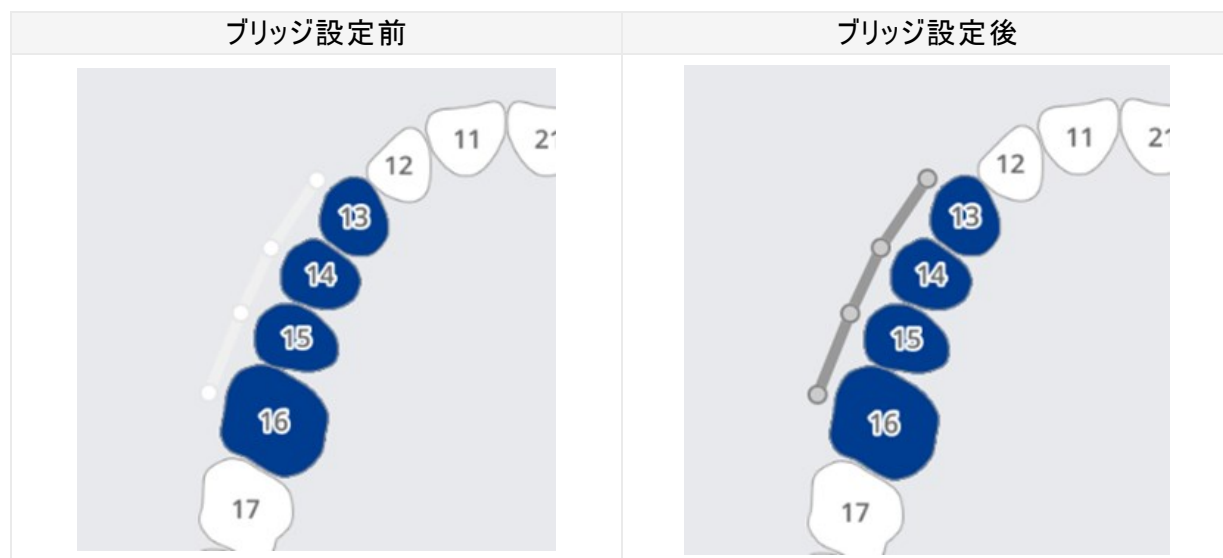

スキャンオプションの設定

作業しているプログラムにより、さまざまなスキャンオプションが提供されます。

選択したスキャンオプションは各スキャンプログラムに渡されます。

Medit Scan for Labs

一般オプション

	隣在歯	支台歯と隣在歯をマーキングし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	対合歯	拮抗歯を自動的にマークし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	咬合器	スキャンプログラムで咬合器を選択するためのオプションを表示します。
	移動マーカー	スキャンプログラム中の「顎の運動」のスキャン方法を使用できるようにします。

歯別のオプション

	スキャンボディ	スキャンプログラムでスキャンボディをスキャンするための方法を設定できます。
	施術前スキャン	スキャンプログラムで施術前模型をスキャンするための方法を設定できます。

	ワックスアップスキャン	スキャンプログラムでワックスアップをスキャンするための方法を設定できます。
---	-------------	---------------------------------------

お気に入り追加

製品をお気に入りとして登録すると、素早く製品を選択できます。

登録済みお気に入りのリストはテンプレートとして管理され、エクスポートおよびインポート機能を通して共有できます。

お気に入り追加

1. 歯番を選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - 。タイプ – 方法 – 材料 – シェードは、すべてが選択されていなくても、お気に入りとして登録できます。
3. 「星」アイコンをクリックします。

4. 選択したパラメータ(歯番を除く)の組み合わせは、お気に入りの検索リストに掲載されます。

お気に入りテンプレートの管理

異なるタイプのテンプレートを登録、管理、共有できます。

追加	新規テンプレートを追加します。
名前の変更	現在のテンプレート名を変更します。
削除	現在のテンプレートを削除します。
エクスポート	現在のテンプレートをファイルにエクスポートします。
インポート	テンプレートファイルをインポートします。

スキャン/CADでの作業

スキャン処理

入力した情報に基づき、スキャンを進めます。

1. 治療情報を入力/保存し、必要なスキャンオプションを選択します。
2. 画面の右上隅の「スキャン」ボタンをクリックします。

CAD処理

Medit Linkはexocadと統合しています。

CAD	治療情報の登録	治療情報の確認	CAD実行の指示	Medit Linkに CAD結果をイン ポート
exocad	O	O	O	O

1. 設定>接続プログラムの設定で、リストから選択のCADプログラムをリンクできます。
2. CADタブの作業情報および設計オプションを入力/保存します。
3. 画面右上隅の「CAD」をクリックします。
4. リンクしたCADプログラムが実行され、データは自動的に送信されます。
5. CAD実行後に結果を保存します。

注意

MacOS用Medit Linkは、CADでリンクする機能をサポートしていません。

結果ファイルの取得

スキャン結果ファイルのエクスポート

注文を通してパートナーと結果を共有することに加え、Medit Linkを通して、エクスポート機能を使用して希望するファイル形式で結果ファイルを保存することもできます。

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

ファイルのエクスポート先	結果ファイルの保存先を指定します。
フォルダ名	システムが新規フォルダを作成し、そこにすべての結果ファイルを保存します。 デフォルトのフォルダ名は命名ルールによって設定されます。直接フォルダ名は変更できます。 設定 > エクスポートオプション > フォルダ名のルールで命名ルールを定義できます。
ファイル名	結果のファイル名を設定します。名前ルールでデフォルトのファイル名は設定されます。直接フォルダ名を変更できます。 設定>エクスポートオプション>フォルダ名のルールから名前ルールを定義できます。
CADタイプ	設計プログラムに使用するCADプログラムを選択します。 Medit Linkは、追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいたファイルを調整します。
メッシュ形式	メッシュファイル形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
ファイルの圧縮	すべての結果を一つのファイルに圧縮します。
個別メッシュデータの結合	個別の歯と上顎または下顎の結果を結合します。いくつかのファイルを一つのプログラムにインポートできない場合に役に立ちます。


すべての咬合関係をエクスポート	複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、一度にすべての咬合結果をエクスポートできます。
ケース情報をPDFとして保存	結果付きPDFとしてケース情報を保存します。

ケースリストから結果ファイルをエクスポート


Case BoxとIn Boxのケースリストの上の「エクスポート」オプションを使用して、一つまたは複数のケースの結果ファイルを同時にエクスポートできます。

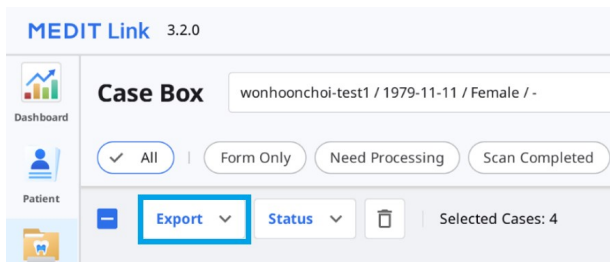

1. In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. リストからエクスポートするすべてのケース結果ファイルを選択します。

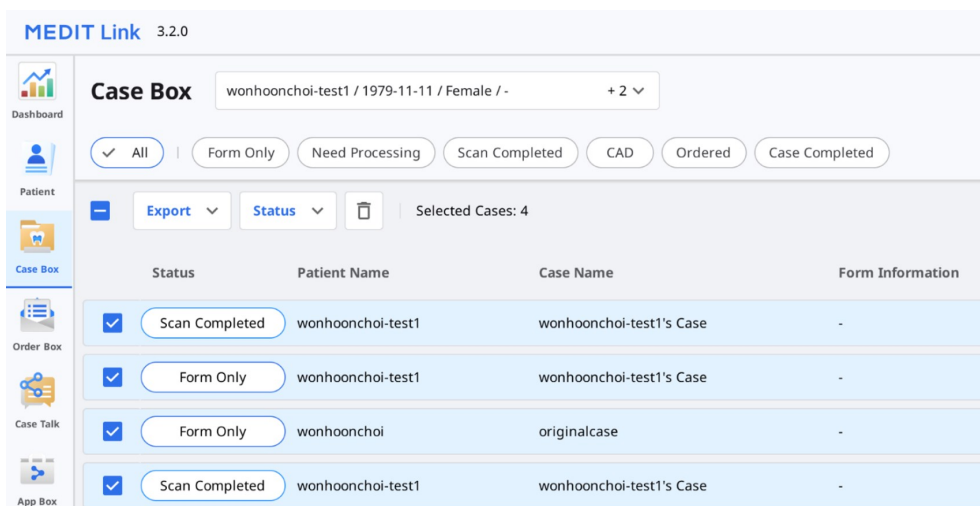

3. 「エクスポート」をクリックし、「結果ファイル」を選択します。

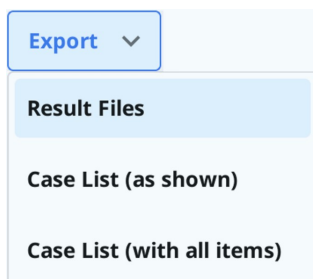

4. 保存先フォルダ、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブでエクスポートオプションを選択します。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

注意

複数のケースのファイルをエクスポートする場合、「フォルダ名」と「ファイル名」フィールドは編集できません。

フォルダ名とファイル名は、設定 > エクスポートオプション の「フォルダ名のルール」と「ファイル名のルール」で設定しているルールに沿って自動的に作成されます。

5. 「エクスポート」をクリックします。
6. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート

ファイルビューアータブの右上隅にある「エクスポート」アイコンを使用して、スキャン結果ファイルをエクスポートできます。

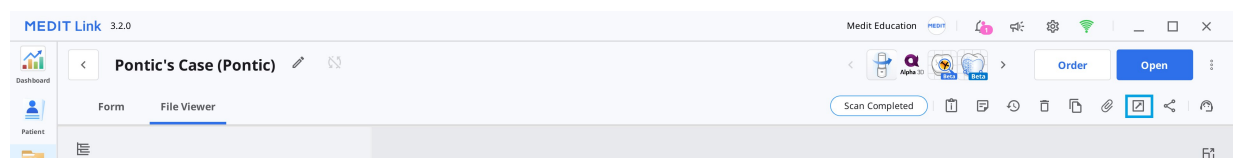

1. In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. ファイルビューアータブの右上隅にある「エクスポート」アイコンをクリックします。



4. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. 「ファイルリスト」タブで、不要なファイルの選択を解除してケースに必要なファイルを選択できます。

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]
☒ Maxilla
☒ Base
☒ Mandible
☒ Base
☒ Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion
☒ Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible
☒ Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export

6. 「エクスポート」をクリックします。
7. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。


Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

データツリーから結果ファイルのエクスポート


ファイルビューアーの拡張メニューから特定のデータグループのファイルをエクスポートできます。

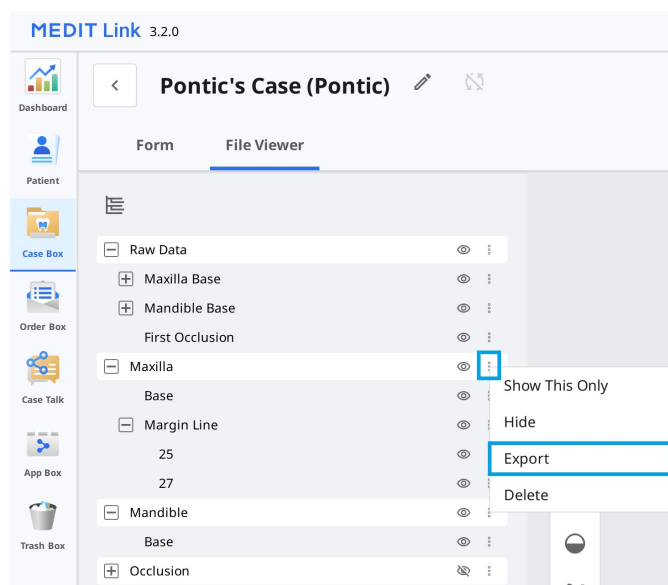

1. In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. データグループの横にある三点リーダーアイコンまたはファイルビューアータブのデータツリー中のいずれかをクリックします。

...

4. 次に「エクスポート」をクリックします。

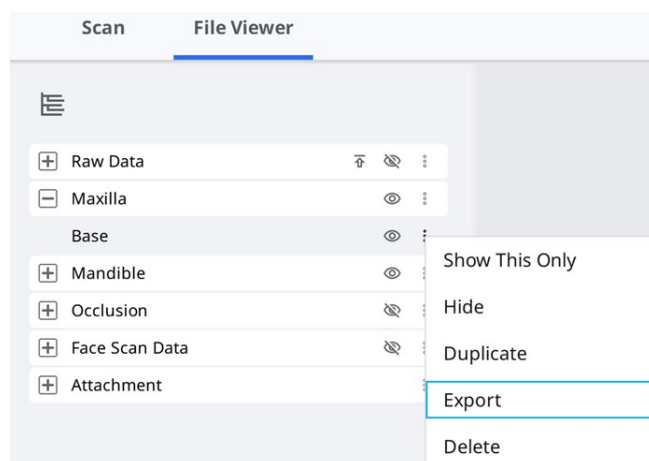

5. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. ファイルリストで選択されているデータツリーで選択したファイルだけが表示されます。

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

CSVとしてケースリストをエクスポート


Medit LinkはCSV形式でケースリストをエクスポートできる機能を提供しています。

基本情報付きケースリストをエクスポートし、ケースを簡単に管理できます。

1. In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. エクスポートするケースを選択します。

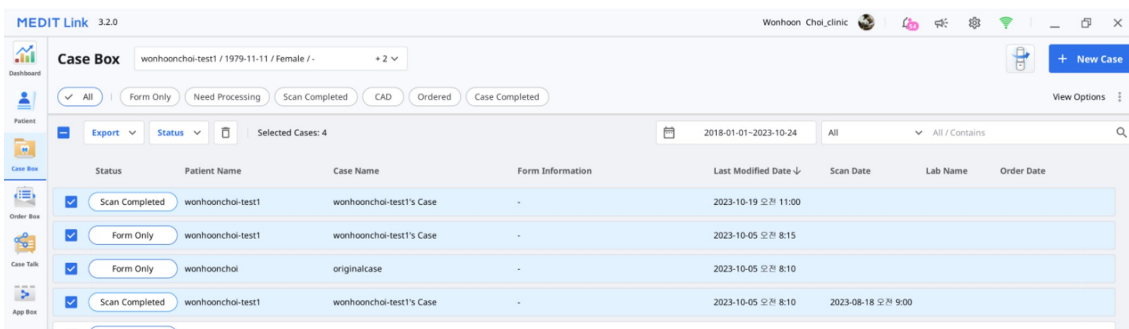

3. 「エクスポート」をクリックし、「ケースリスト(表示どおり)」または「ケースリスト(すべて項目入り)」を選択します。

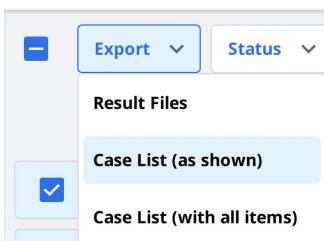

注意

ケースリスト(表示どおり): 画面上に現在表示されている項目入りのケースリストをエクスポートします。表示オプション> 表の項目に移動し、希望する項目を表示または非表示にします。
ケースリスト(すべて項目入り): ステータス、ケース名、生年月日、フォーム情報、最終変更日、スキャン日、注文日、技工所名などすべての項目入りのケースリストをエクスポートします。

4. 保存場所とファイル名を定義してから、リストを保存します。
5. ケースリストは、CSVファイルとして保存されます。

マージンラインのエクスポート


Medit Scan for Clinicsは、マージンラインの作成機能を提供し、Medit LinkはCADプログラムにマージンラインを転送できます。

色としてマージンラインをエクスポート

通常、Medit Linkは色としてマージンラインを転換し、上顎または下顎を一緒にその結果をエクスポートします。色情報のCAD参照データのマージンラインを作成できます。

例:

上 顎

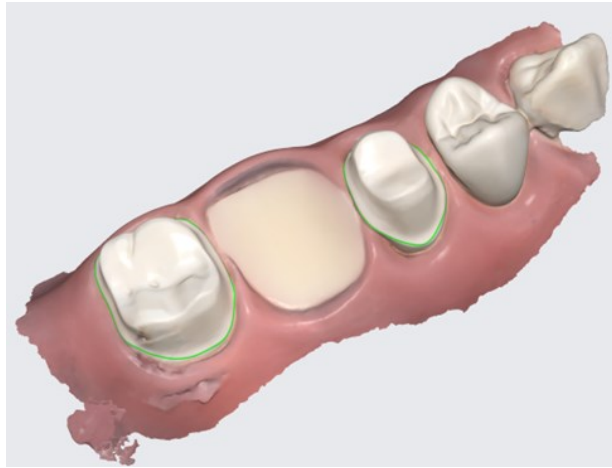

色情報としてのマージンライン付き結果

注意

この機能は、meditMesh、OBJ、PLYなどの色情報を含む形式で利用できます。マージンラインはSTLに転換できません。

注意



CADタイプ > 3Shapeはこの機能をサポートしていません。

ファイルとしてマージンラインをエクスポート

exocadの場合、Medit Linkはexocadに直接インポートできる“~margin.xyz”にマージンラインをエクスポートします。

追加作業の必要なしにexocadのこのファイルを使用できます。

例：

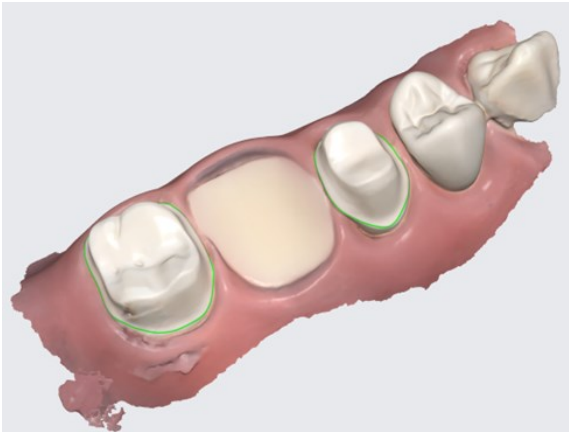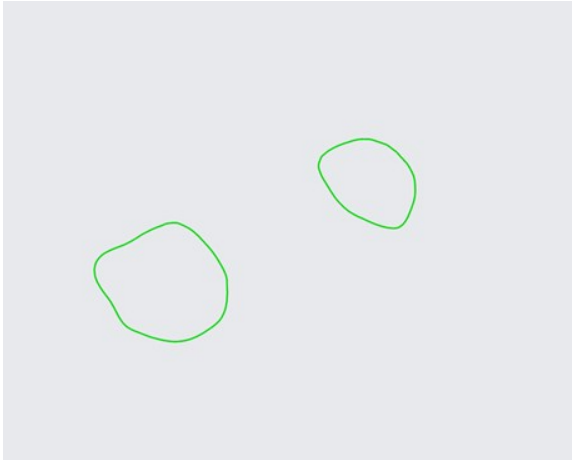上 顎	マージンライン
 色情報としてのマージンライン付き結果	 個別ファイルとしてエクスポートされたマージンライン

Medit Linkウェブからファイルをダウンロード

Medit Linkはダウンロード機能を提供しています。

Medit Linkアプリケーションをインストールせずに結果ファイルを取得したい場合は、Medit Linkウェブサービスからファイルをダウンロードできます。

注意


データは、ウェブからファイルをダウンロードするためにMeditクラウドにアップロードする必要があります。

ダウンロード機能は、Medit Linkウェブサービスの以下のメニューで利用できます。

- Case Box
- Work Box
- Webビューワー

Case Box/Work Box


右上部に「ダウンロード」ボタンがあります。

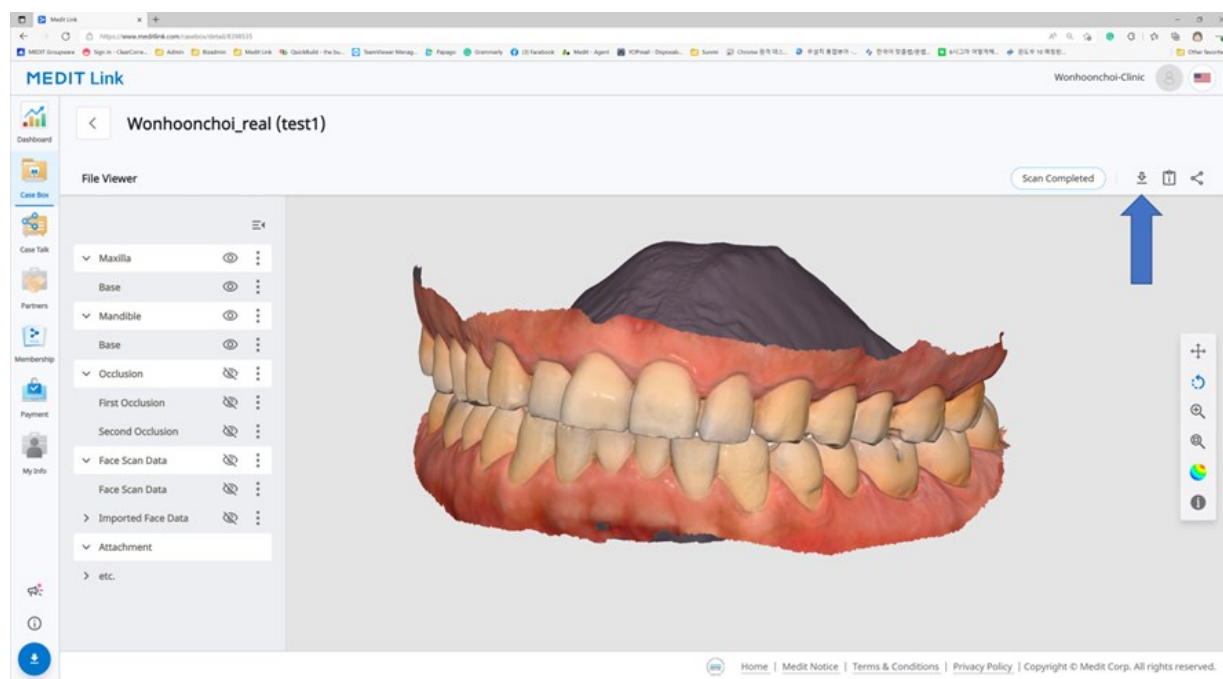

Webビューワー

Case Talkを使用してケースを共有する場合、ダウンロードを許可するかどうかを設定できます。

「ダウンロードを許可」にチェックを入れ、ケースを共有する場合、共有リンクに接続しているすべてのユーザーはファイルをダウンロードできます。

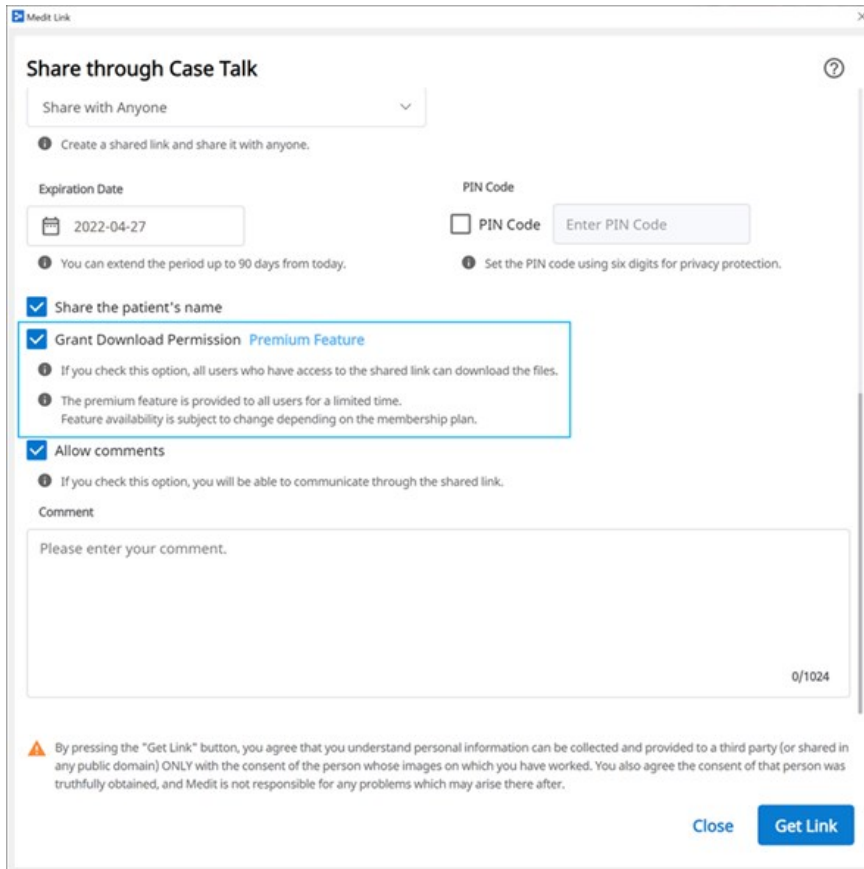

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Web Viewerの右上部に「ダウンロード」アイコンがあります。

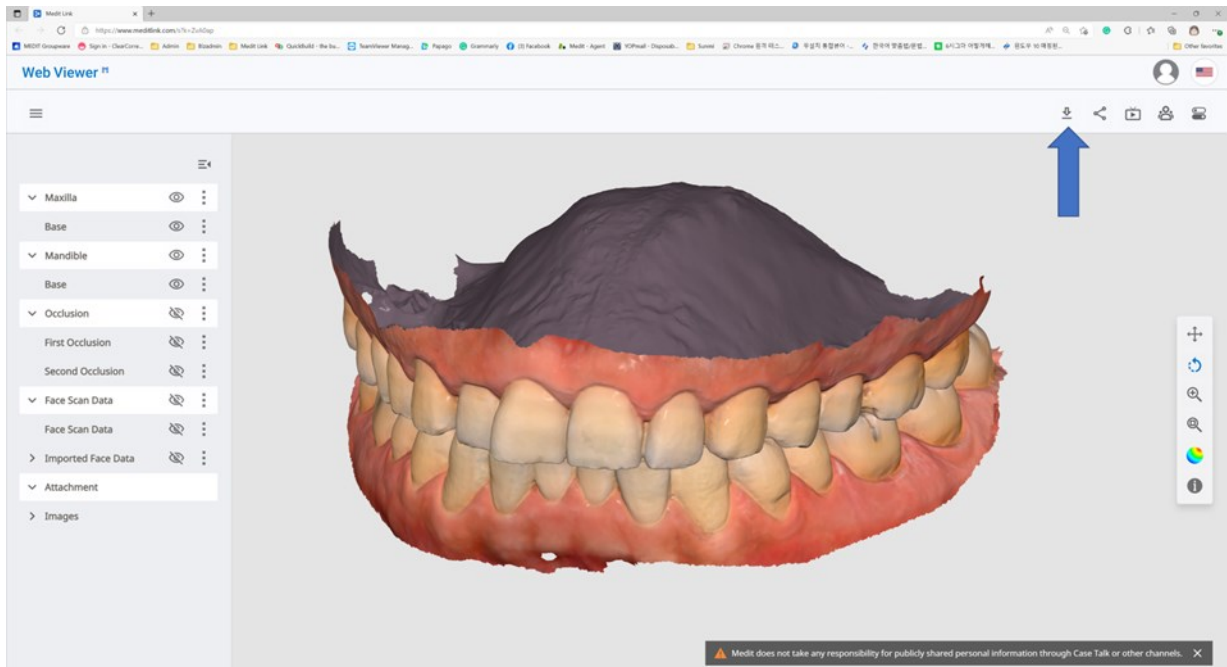

1. 「ダウンロード」をクリックします。



2. ダウンロードダイアログからメッシュ形式を選択します。

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) **OK**

3. 次に「OK」をクリックします。

ケースの注文/管理

接続しているプログラムで取得したデータおよびユーザーが添付したデータで簡単にケースを注文できます。

ケースの注文

Case Boxのパートナーに注文を出すことができます。

1. 「注文」ボタンをクリックします。
2. 注文に必要な情報を確認します。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. パートナーを選択します。
4. 注文リストタブから製品情報を確認します。
 - 患者名を共有するかどうかを決めます。
5. ファイルリストタブから注文するファイルを確認します。
6. 希望納品日を入力します。
 - デフォルト値は、注文日後7日で設定されています。
7. パートナーにメモやタグを追加し、特定の詳細説明ができます。
8. 複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、「すべての咬合関係を注文する」をチェックすると一度にすべての咬合結果を送信できます。
9. 注文を進めます。

注文の確認 (In Box)

- 注文受領時に承認します。
- 承認した注文は、Work Boxに転送されます。

注文のキャンセル (Order Box)

- パートナーが注文を承認する前に注文をキャンセルできます。
- キャンセルされたケースは、再度注文できます。

注文の拒否 (In Box)

- 受領した注文を拒否できます。
- 拒否されたケースは再度注文できます。

注文済みケースの確認

歯科医院アカウントのOrder Boxから注文したケースの詳細を確認できます。技工所アカウントのIn Boxから受領したケースも確認できます。

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

注文情報	注文に含むことができる情報は次の項目です。注文ID/患者名/アカウント名/スキャン日/納品日/配送予定日/メモ。 注文済み製品および配送情報の詳細を確認できます。
注文リスト	注文リストは、注文した製品の詳細を表示しています。
配送	発送情報の入力/確認をします。

配送情報の入力 (In Box)

完了した作業の配送情報を入力し、発送を開始します。

1. 配送タブをクリックします。
2. 配送情報を入力し、「登録」をクリックします。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. 入力した情報はパートナーに送信されます。

納品日の管理

注文時に希望する納品日を設定でき、この情報はパートナーに転送されます。

納品希望日の設定（歯科医院アカウント）

- Case Boxから注文する場合、希望納品日を入力できます。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- デフォルト値は、注文日後7日です。
- 製品受取希望日時を入力し、注文を進めます。
- スライダーを使用して簡単に時間を設定できます。

納品希望日の設定（歯科医院アカウント）

- In Boxから注文されたケースの納品希望日を入力できます。

1. パートナーに納品希望日を確認し、「編集」ボタンを使用して予定を変更します。



2. 実際の作業日を考慮して納品予定日を入力します。必要があれば、コメントを残すこともできます。
3. 「適用」をクリックします。

4. 納品予定日およびメモは、注文と一緒に転送されます。
 - Order Boxの日付とメモを確認できます。
 - 納品予定日を変更でき、その変更はパートナーに転送されます。
5. 「履歴」ボタンを使用してケース履歴を確認できます。



ケースの完了

完了 (Work Box/In Box)


すべての作業が完了したら、「完了」をクリックし、ケースを完了します。

ケースの詳細からケースを完了する

「開く」または「再スキャン」ボタンの右側に三点リーダーアイコンがあります。




アイコンをクリックし、「Done」を選択し、作業を完了します。

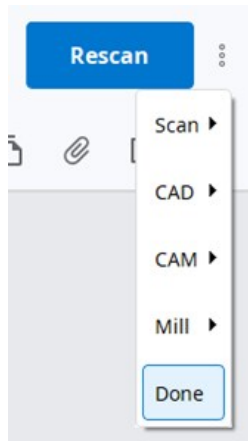

ケースリストから複数のケースを完了する

1. Work Boxに移動します。
2. すべてのケースを選択し、完了します。

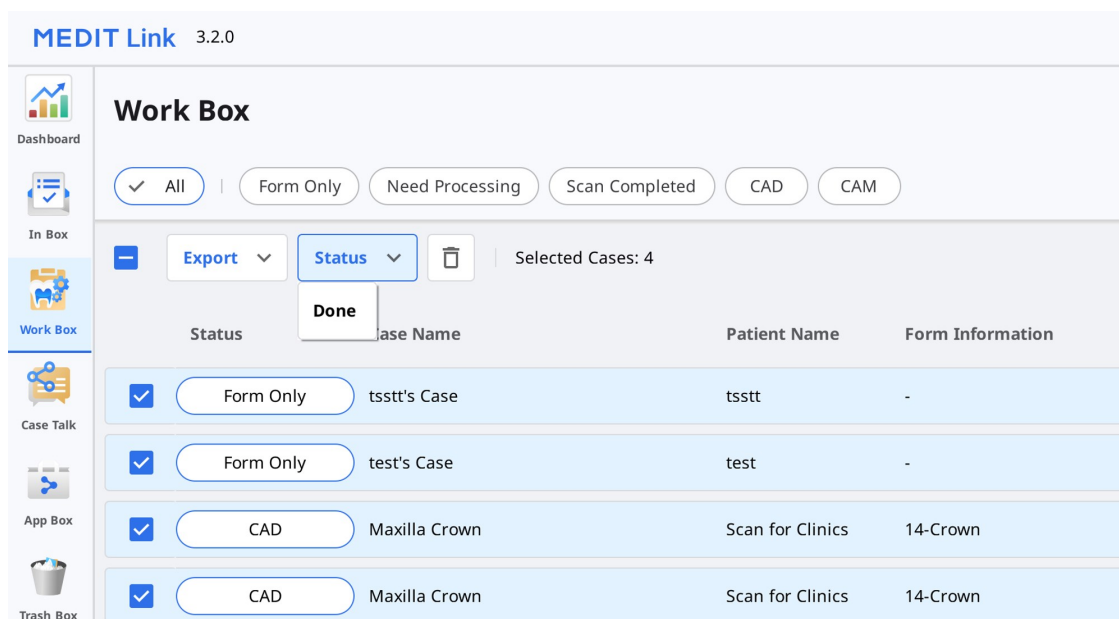


3. 「ステータス」をクリックし、「Done」を選択します。

完了 (Case Box／Order Box)

技工所側でケースが完了したら、歯科医院はすべての注文処理を完了させるためにケースを確認する必要があります。

技工所での作業が完了したら、歯科医院はOrder Box内の「配送確認」ボタンを表示できます。

これをクリックすると、全注文プロセスが完了し、ケースステータスが「ケース完了済み」に変更されます。

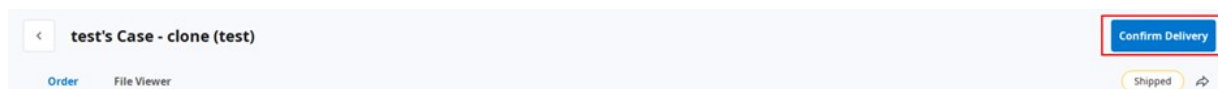

Case Boxの注文のないケースの完了

技工所に注文されていないケースに関して、Case Boxからこれらのケースを完了にできます。

1. Case Boxに移動します。
2. 完了させたいケースを選択します。

The screenshot shows the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box (highlighted), Order Box, Case Talk, and App Box. The main area is titled 'Case Box' and has a 'Patient' dropdown menu. Below this are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Cas'. There are also buttons for 'Export', 'Status' (with a dropdown arrow), and a trash icon. A 'Selected Cases: 4' indicator is present. The 'Status' dropdown menu is open, showing 'Case Completed' as the selected option. Below the menu is a table with columns 'Status', 'Case Name', and 'Case Name'. The table contains four rows, each with a checkbox, a status label, a case ID, and a case name.

	Status	Case Name	Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case

3. 「ステータス」をクリックし、「Case Completed」を選択します。

タグを使用してやり取りをする

タグを使用してケースに関する追加情報を追加し、パートナーに送信できます。

新規ケースの作成時にタグを追加

新規ケースを作成またはケース情報を編集時にタグを入力できます。

The screenshot shows the 'New Case Information' form. It includes fields for 'Patient Name*' and 'Case Name*'. Below these is an information icon and text: 'Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.' The 'Tag' field is highlighted with a blue border and contains three existing tags: 'Doctorname', 'Specialmaterial', and 'SpecialComment', each with a close button. Below the tag field is a note: 'You can add up to 10 tags of 100 characters or less.' and a link for 'Terms & Conditions'. At the bottom are buttons for 'Cancel', 'Register', and 'Register & Scan'.

以前に使用したタグを簡単に検索し、選択できます。

This screenshot shows the same 'New Case Information' form, but the 'Tag' field now contains the letter 't'. Below the field, a search bar shows 't (new)' and a list of suggestions is displayed: 'tet', 'tagtest', 'tag', and 'tat2'. The suggestions list is highlighted with a blue border.

注文時にタグを追加

注文中に注文ダイアログのタグを確認し、編集できます。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

ケースの詳細でタグを確認

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...

Form File Viewer

Raw Data Maxilla Base Mandible Base Occlusion

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name Worker_Name

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

3D model of teeth

