

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

การแนะนำ	7
Medit Link	7
ภาพรวมการบริการ	7
บริการคลาวด์	8
แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ	8

Medit Link > Installation

ความต้องการของระบบ	9
ความต้องการของระบบสำหรับ Windows	9
ความต้องการของระบบสำหรับ macOS	9
ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ	9
แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์	9
ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์มือถือ	9
การติดตั้งบน Windows	10
การติดตั้งบน macOS	13

Medit Link > Getting Started

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	17
เว็บไซต์ Medit Link	17
สมัครลงทะเบียน	17
หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
ภาพรวม Dashboard	21
Medit Insights	21
สมัครสมาชิก Medit Insights	22
ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights	23
Patient	24
ค้นหาผู้ป่วย	24
Case Box/Work Box	25
การกรองเคส	25
กรองตามผู้ป่วย	25
กรองตามสถานะ	26
กรองตามระยะเวลา	27
กรองตามการค้นหา	27
รายละเอียดเคส	27
Order Box/In Box	29
รายละเอียดคำสั่งทำ	29
แท็บใน Order Box/In Box	29
Case Talk	30
การสร้าง Case Talk	30
การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์	31
รายละเอียด Case Talk	32
Web Viewer	33
คำอธิบายประกอบ	34
ความคิดเห็น	35

การแชร์หน้าจอบนมือถือ	36
แผนผังข้อมูล	36
การควบคุมแผนผังข้อมูล	36
การควบคุมโมเดล 3D	37
Partners	38
ค้นหาพันธมิตร	38
รายชื่อพันธมิตรของฉัน	38
ค่าเชิญเป็นพันธมิตร	39
Membership	40
การเป็นสมาชิก	40
แผน	40
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	41
สมัครสมาชิก	41
ยกเลิกการสมัครสมาชิก	43
ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน	44
วิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน	45
วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน	46
แลกรับ	47
ลงทะเบียนรหัสแลกรับ	47
เปิดใช้งานรหัสแลกรับ	48
My Info	49
บัญชีของฉัน	49
คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)	49
เครื่องสแกนของฉัน	50
เมนูอื่น ๆ	51
ประกาศและการอัปเดต	51
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	51
ดาวน์โหลดแอป Medit Link	51

Medit Link > Medit Link App

ภาพรวม	53
ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท	53
แถบชื่อเรื่อง	54
ข้อมูลของฉัน	54
การแจ้งเตือน	54
ประกาศและการอัปเดต	55
การตั้งค่า	55
สถานะเครือข่าย	56
การตั้งค่า	58
ทั่วไป	58
การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	59
กำหนดระยะเวลา	60
พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง	60
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	60
ตั้งค่าโปรแกรมที่เชื่อมต่อ	60
ตัวเลือกการส่งออก	61
เครื่องมือแปลงเคส	62
ส่งออกเคส	63
นำเข้าเคส	64
ตัวเลือกพรีอ็อกซี	65
เกี่ยวกับ	66
คู่มือผู้ใช้	66
เมนู	67

Dashboard	67
Patient	67
เพิ่มผู้ป่วยใหม่	68
ลบผู้ป่วย	68
ผลงานรวมผู้ป่วย	68
Case Box/Work Box	69
แท็บใน Case Box/Work Box	69
ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box	70
Order Box/In Box	71
แท็บใน Order Box/In Box	71
Case Talk	71
App Box	72
All	72
Medit Apps	72
ถูกดาวน์โหลด	73
Trash Box	73
โปรแกรมจัดการการชั่งโครโนซ์เคส	73
อัปโหลด	74
ดาวน์โหลด	74
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	75
โปรแกรมดูไฟล์	76
แผนผังข้อมูล	76
เครื่องมือควบคุมโมเดล	76
การควบคุมโมเดล 3D	76
การควบคุมภาพ 2D	77
เครื่องมือฟังก์ชัน	78
การจับภาพและบันทึก	78
การจับภาพออร์โธ	78
เติมเต็มช่องว่าง	79
การตัดแต่ง	79
ปรับการจัดแนวสลับฟันให้เหมาะสม	82
การเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่าง	83
จัดการข้อมูลสลับฟันหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์	84
วิธีการจัดการผลลัพธ์หลายรายการ	84
ตัวเลือกมุมมอง	86
ตัวกรองสถานะ	86
ประเภทมุมมอง	87
การจัดกลุ่ม	87
การเรียงลำดับ	87
การกรองและการค้นหา	89
กรองตามผู้ป่วย	89
กรองตามวันที่	90
ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง	90
Medit Link > Workflow	
สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส	92
การสร้างเคส	92
สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)	92
สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	93
การแก้ไขเคส	93
แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)	93
แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	94
การโคลนเคส	95

โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)	95
โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	95
การลบเคส	96
ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)	96
ข้อมูลแบบฟอร์ม	97
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box	97
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	97
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box	97
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	97
การเชื่อมต่อพื้นที่เข้ากับสะพานพื้น	97
การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน	98
Medit Scan for Labs	98
ตัวเลือกทั่วไป	98
ตัวเลือกตามพื้น	98
การเพิ่มไปยังรายการโปรด	98
เพิ่มไปยังรายการโปรด	98
จัดการแท็บโปรด	99
ทำงานกับการสแกน/CAD	100
กระบวนการสแกน	100
กระบวนการ CAD	100
ใช้แอปเพิ่มเติม	100
เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน	100
การจัดการตัวเปิดแอป	100
ตัวเปิดด่วน	101
แอปทั้งหมด	101
รับไฟล์ผลลัพธ์	102
ส่งออกไฟล์ผลการสแกน	102
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส	103
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์	104
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล	106
ส่งออกรายการเคสเป็น CSV	108
ส่งออกเส้นขอบ	109
ส่งออกเส้นขอบเป็นสี	109
ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์	109
ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link	110
Case Box/Work Box	110
Web Viewer	111
สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ	113
การสั่งทำเคส	113
ยืนยันคำสั่งทำ (In Box)	113
ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)	114
ปฏิเสธคำสั่งทำ (In Box)	114
การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ	114
การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)	114
การจัดการวันส่งมอบ	115
การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)	115
การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)	115
การเสร็จสิ้นเคส	116
เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)	117
เสร็จสิ้นเคสจากรายละเอียดเคส	117
เสร็จสิ้นหลายเคสจากรายการเคส	117
เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)	117
เสร็จสิ้นเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำใน Case Box	118

สื่อสารโดยใช้แท็ก	119
เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่	119
เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ	120
ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส	120

การแนะนำ

Medit Link

Medit Link เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคลินิกและห้องแล็บเพื่อส่งมอบขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละฝ่าย

มันนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างตามประเภทและการอนุญาตของแต่ละบัญชี โปรแกรมนี้มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การสแกนด้วยเครื่องสแกนช่องปากและโมเดล การสั่งทำเคส และการออกแบบและการผลิตฟันเทียม

Medit Link ประกอบด้วยบริการบนเว็บและแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

ภาพรวมการบริการ

		เว็บ	แอป
		- ลงทะเบียนและจัดการบัญชี - ค้นหาและจัดการพันธมิตร - แชร์เคสผ่าน Web Viewer พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้ - เคสการเข้าถึงที่เกิดขึ้นจากแอป - จัดการคำสั่งทำ	- ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม - สแกน - จัดการคำสั่งทำ - เชื่อมโยงกับ CAD - จัดการผู้ป่วย
คลินิก	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและคลินิกของคุณ และแชร์เคสต่าง ๆ - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม สแกน ส่งคำสั่งทำ และจัดการผู้ป่วย - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
ห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและห้องแล็บของคุณ และแชร์เคสต่าง ๆ - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม สแกน และจัดการคำสั่งทำ - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

บริการคลาวด์

Medit Link รองรับการอัปโหลด/ดาวน์โหลดฐานข้อมูลและไฟล์อัตโนมัติผ่าน AWS (Amazon Web Services)

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์จะถูกซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หลายรายในองค์กรโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้ตลอดเวลา การสำรองข้อมูลบนคลาวด์และการกู้คืนจะรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัย มันช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยแม้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์ขัดข้องกะทันหัน

บริการคลาวด์ช่วยให้ทันตแพทย์และห้องแล็บที่เป็นพันธมิตรสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งอีเมลหรือถ่ายโอนการสแกนด้วยตนเอง ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ป่วย จะได้รับการเข้ารหัส จัดเก็บ และส่งต่ออย่างปลอดภัย Medit ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการแพทย์ เช่น HIPAA และ GDPR

แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ

Medit Link เสนอระบบการสั่งทำของตัวเอง

- Medit Link ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการเป็นพันธมิตรระหว่างทันตแพทย์และห้องแล็บ และแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณสามารถตรวจสอบและจัดการสถานะการสั่งทำได้

ความต้องการของระบบ

หมายเหตุ

โปรดดูความต้องการของระบบสำหรับ Medit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์การสแกนกับเครื่องสแกนของคุณ

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows

	แล็ปท็อปและเดสก์ท็อป
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	16GB หรือสูงกว่า
กราฟิก	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) หรือสูงกว่า / หรือการ์ดแสดงผล AMD ที่เทียบเท่า
OS	Windows 10 64 บิต (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น 32 บิต) หรือสูงกว่า

ความต้องการของระบบสำหรับ macOS

	Mac
โปรเซสเซอร์	M1 with 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16GB หรือสูงกว่า
OS	Monterey 12 หรือสูงกว่า

ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ

แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์

	เบราว์เซอร์
พีซี	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์มือถือ

	Android	iOS
อุปกรณ์	เทียบเท่า Galaxy S7 หรือสูงกว่า	เทียบเท่า iPhone 7 หรือสูงกว่า
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB หรือสูงกว่า	2GB หรือสูงกว่า
AP	สูงกว่า Snapdragon 710	A10 Fusion


การติดตั้งบน Windows

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อมโปรแกรมสแกน - Medit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs


1. เรียกใช้ Medit_LinkSetup.exe
2. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง
3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Medit Link โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใบอนุญาตแล้วคลิก "ติดตั้ง"

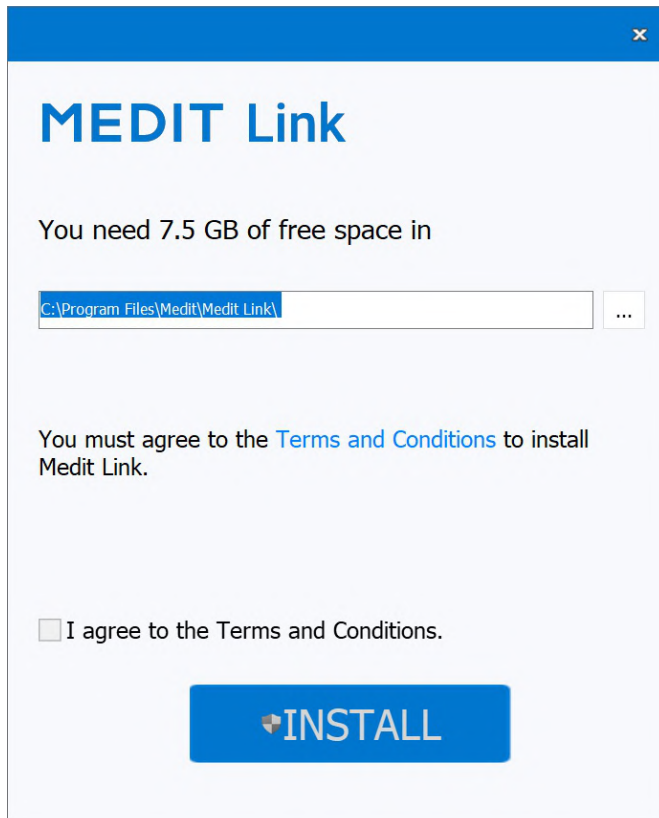

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายเครื่องสแกนออกจากคอมพิวเตอร์แล้วก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป การติดตั้งอาจไม่ดำเนินการต่อหากเครื่องสแกนถูกเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ
5. โปรแกรมจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติและอาจใช้เวลาสักครู่ อย่าปิดหรือถอดปลั๊กพีซีของคุณจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์

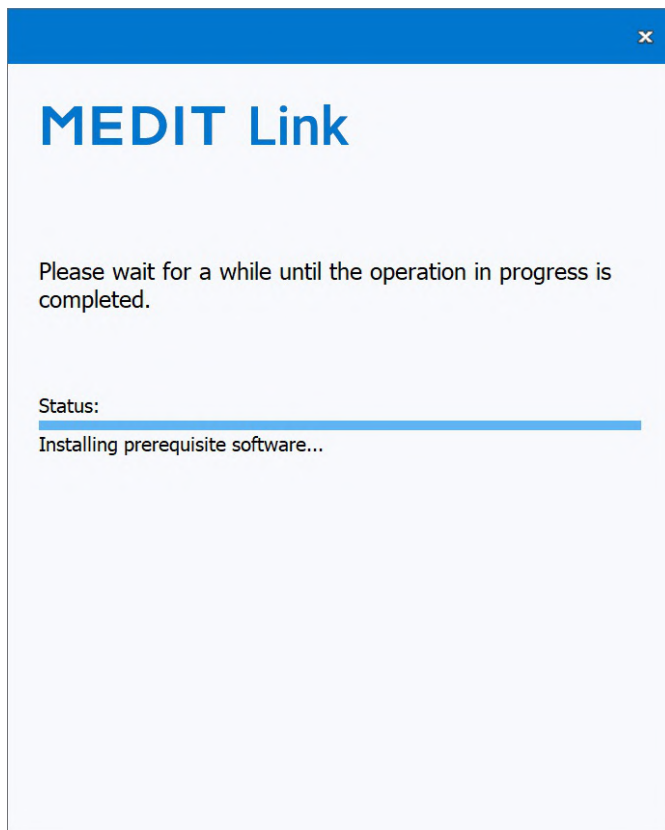

6. โปรดรีสตาร์ทพีซีของคุณหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องรีสตาร์ทพีซี
หากคุณไม่มีเครื่องสแกน

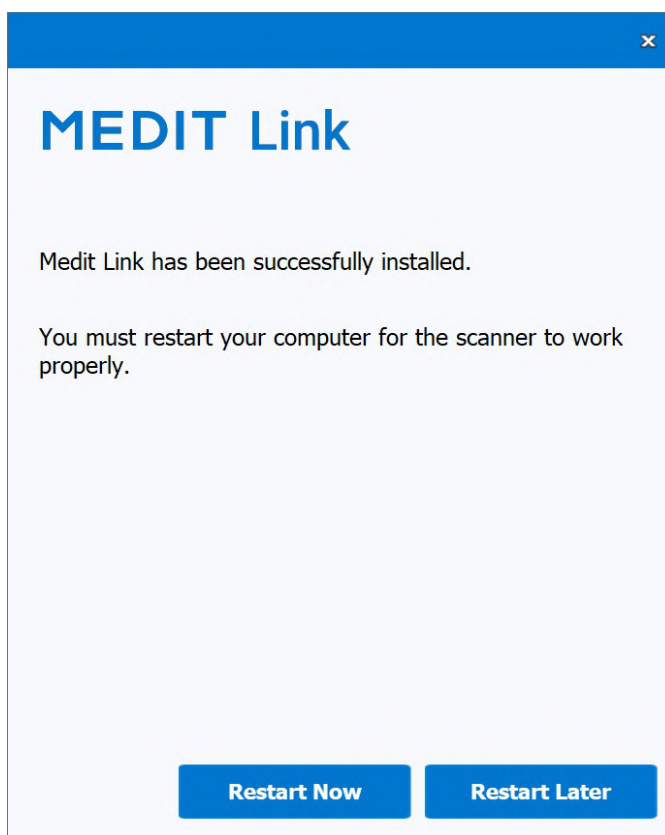


หมายเหตุ

หากคุณไม่รีสตาร์ทพีซีหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครื่องสแกนอาจทำงานไม่ถูกต้อง


การติดตั้งบน macOS

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อม Medit Scan for Clinics


1. เรียกใช้ Medit_Link_x.x.x.pkg แล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

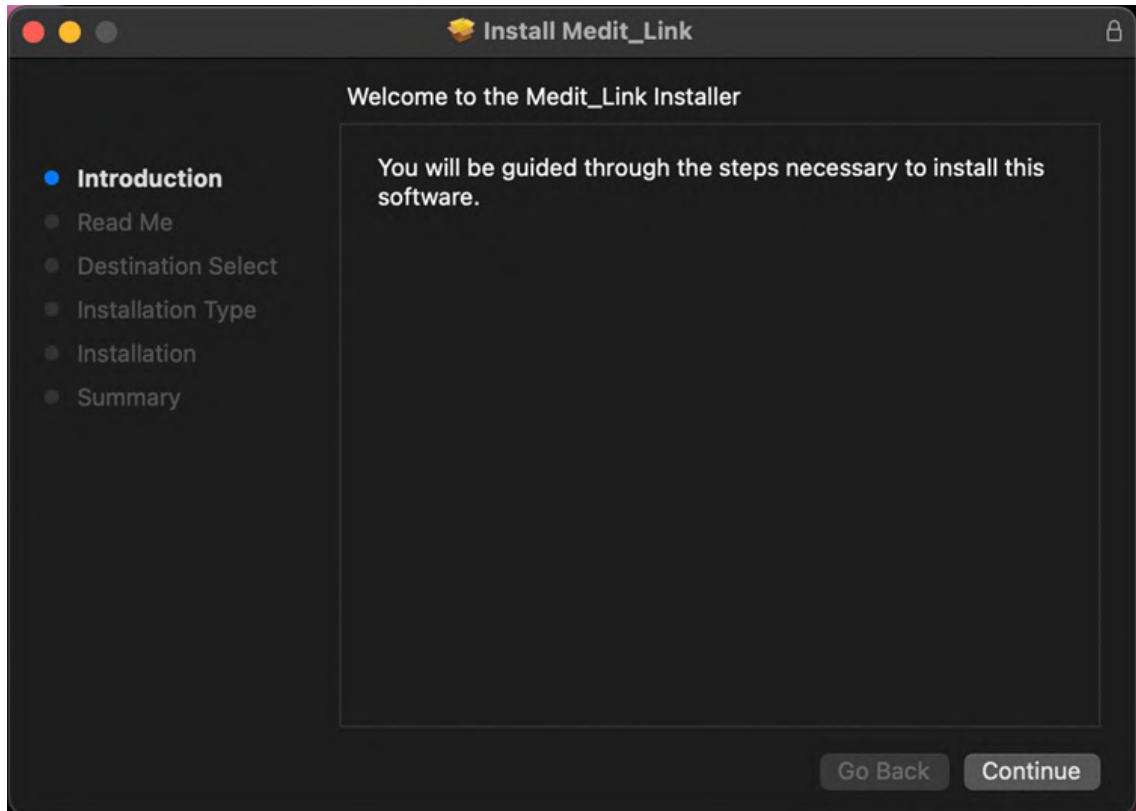


2. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียดแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

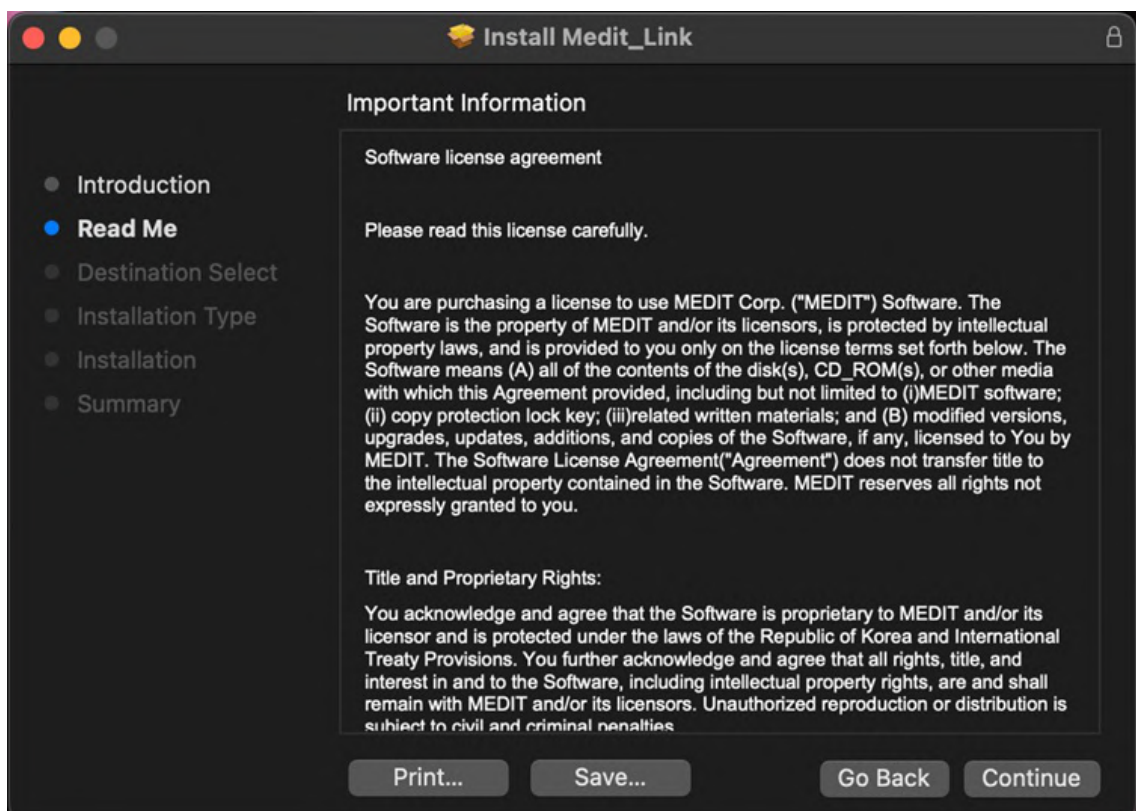

3. เลือกดิสก์ที่จะติดตั้งแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

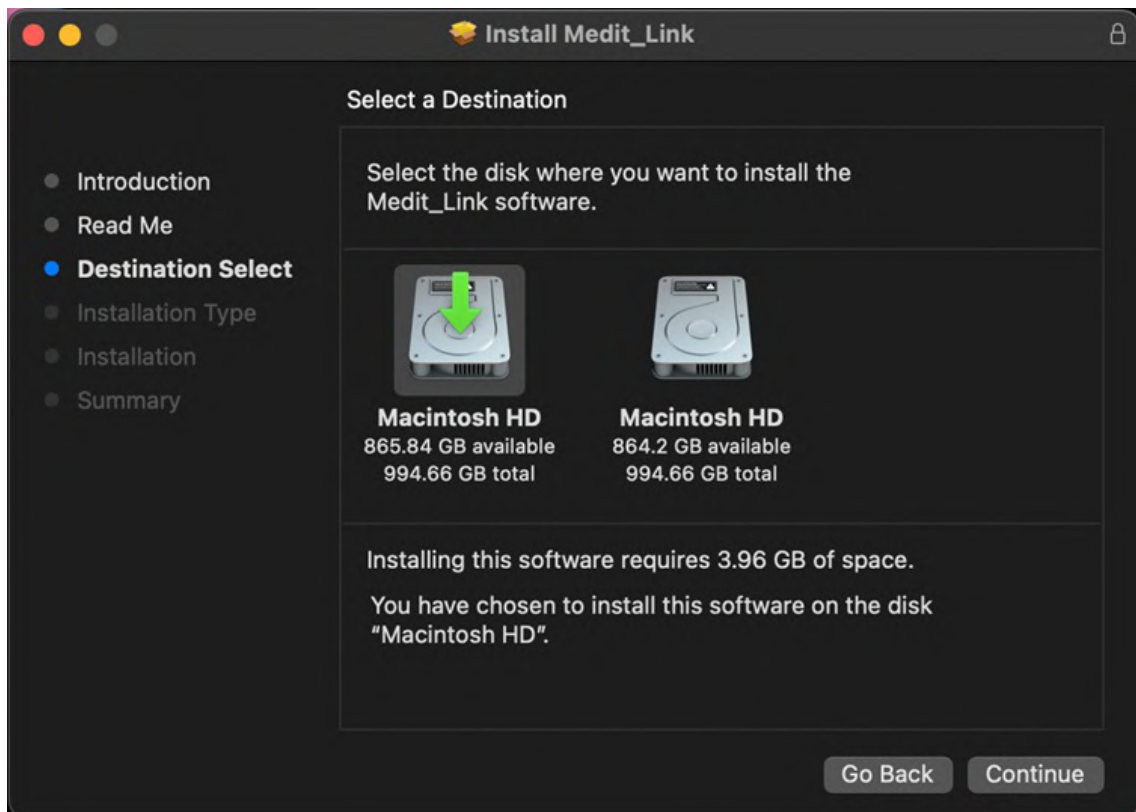


4. คลิก "เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง..." เพื่อเปลี่ยนปลายทางการติดตั้ง

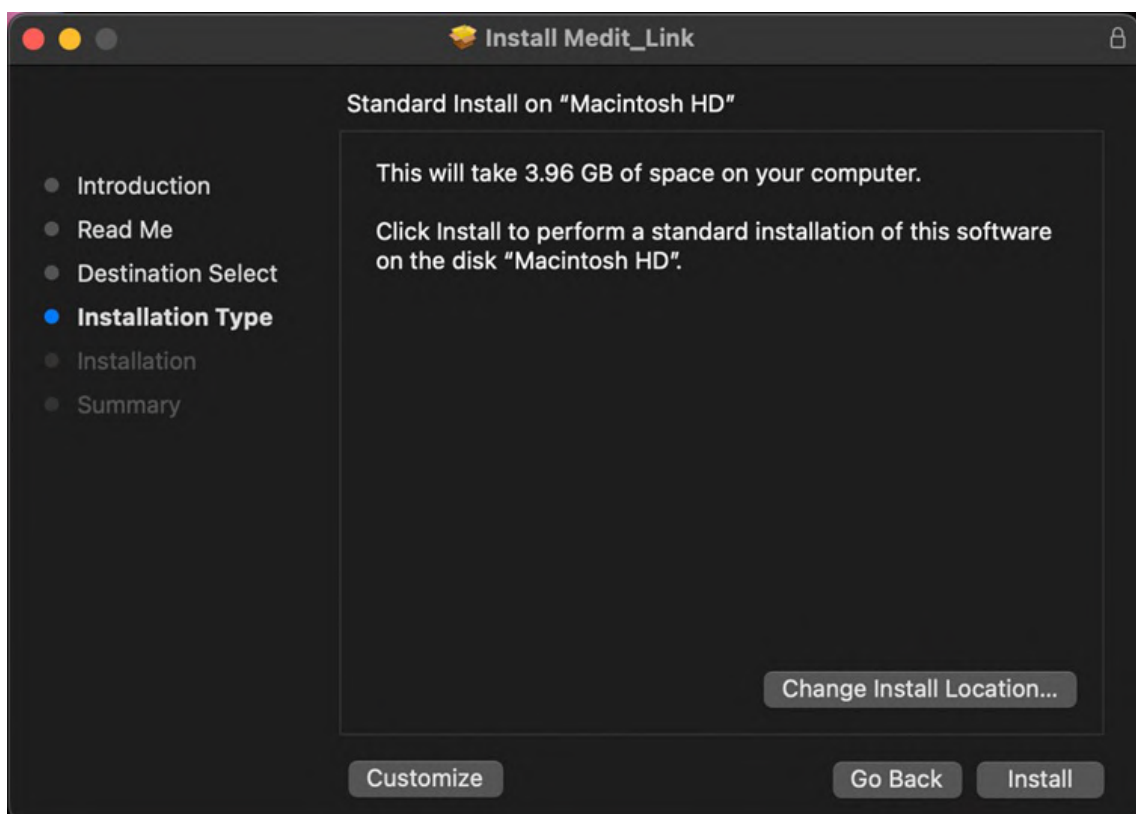


5. คลิก "ติดตั้ง" และพิมพ์รหัสผ่าน Mac ของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้งหากมีการร้องขอ



6. รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

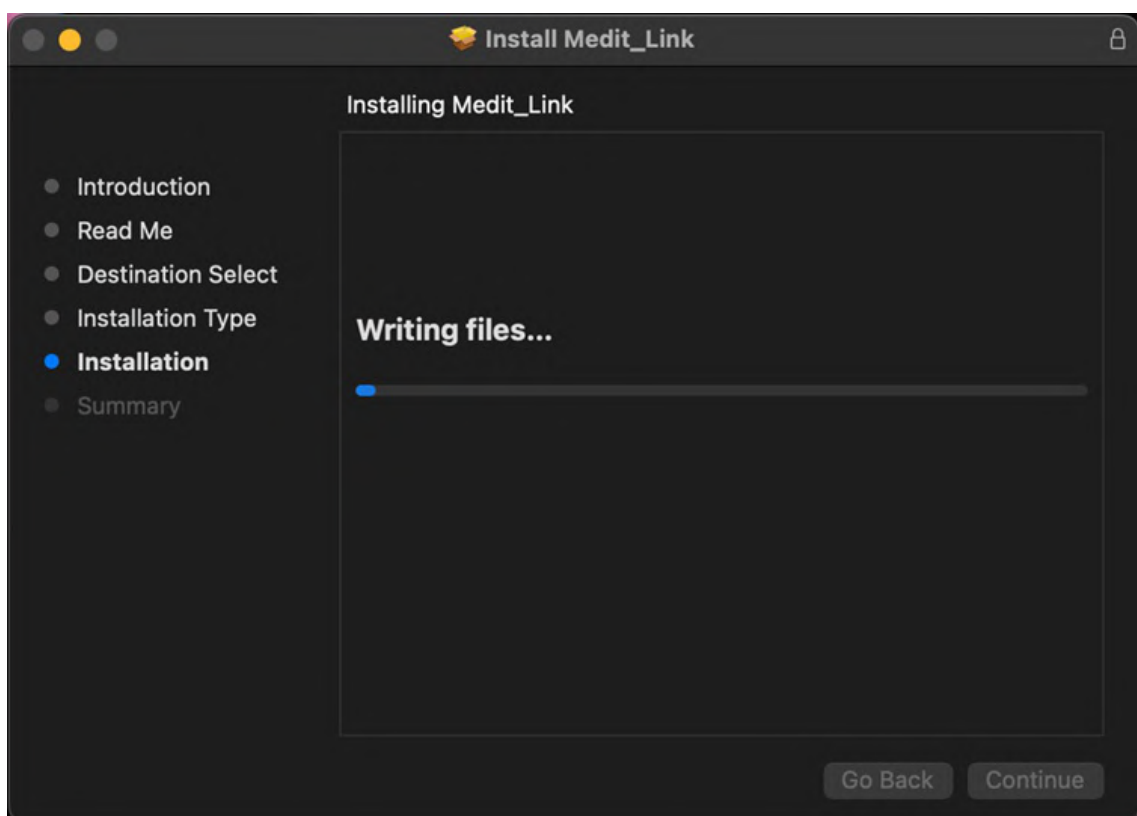


7. คลิก "ปิด" เพื่อออกจากหน้าต่างการติดตั้ง

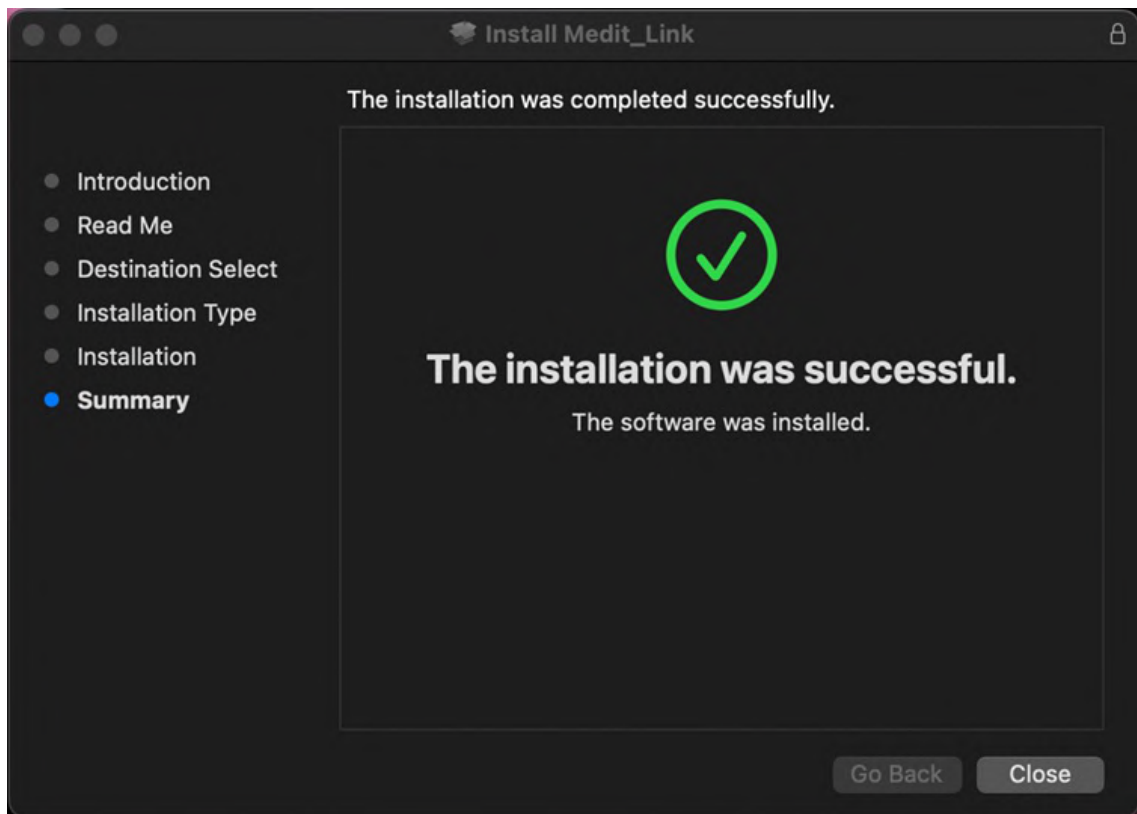

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ Medit Link

สมัครลงทะเบียน Medit Link ได้ที่ www.meditlink.com

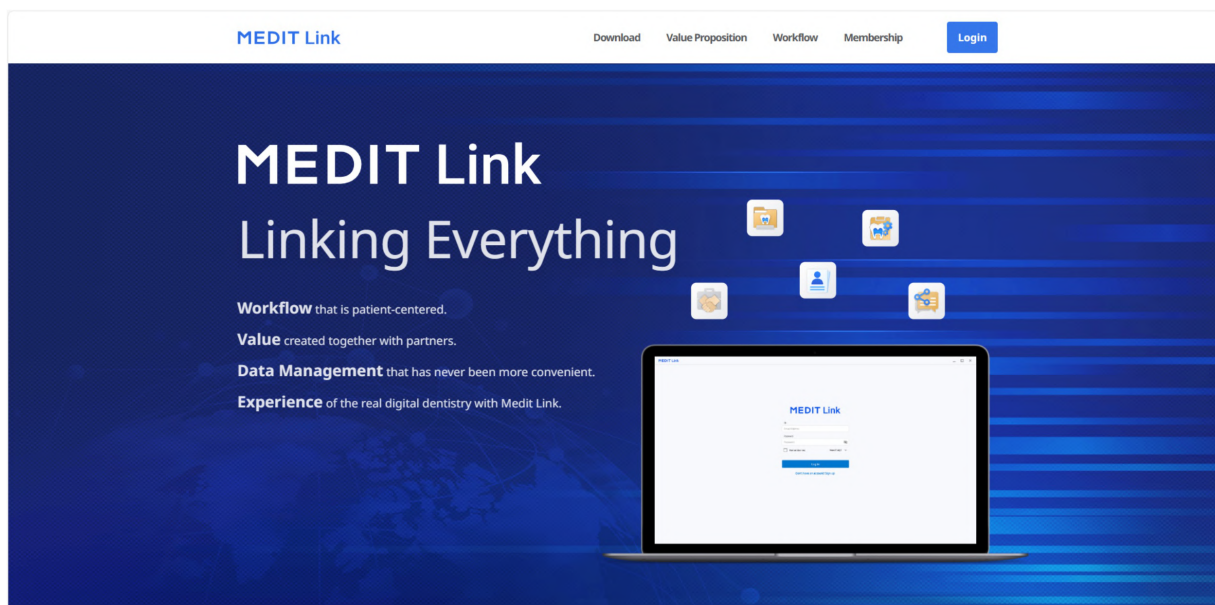

หมายเหตุ

ลงทะเบียน Medit Link China ได้ที่ www.meditlink.cn

สมัครลงทะเบียน

หากต้องการใช้บริการ Medit Link คุณต้องสมัครลงทะเบียนบัญชี คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีใน Medit Link ได้หลังจากการสร้างบัญชีเป็นคลินิกหรือห้องแล็บ

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งในสี่ประเภทบัญชีต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการพร้อมคุณสมบัติและสิทธิพิเศษอย่างเต็มรูปแบบหรือจำกัด โดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี

- คลินิก - ผู้ดูแลระบบ
- คลินิก-สมาชิก
- ห้องแล็บ - ผู้ดูแลระบบ
- ห้องแล็บ - สมาชิก

โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะเป็นตัวแทนขององค์กรของคุณและจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ Medit Link ได้อย่างเต็มที่ ในทางตรงกันข้าม บัญชีสมาชิกมีการเข้าถึงที่จำกัด

หากต้องการสมัครสมาชิก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ "ยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครลงทะเบียน ในหน้าเข้าสู่ระบบ

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) 

2. หลังจากอ่านคำอธิบายที่ให้ไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" สำหรับประเภทบัญชีที่ต้องการ

Create Your Medit Link Account



Clinic

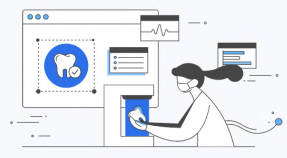

Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. ป้อนชื่อคลินิกหรือห้องแล็บ จากนั้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณต้องการ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:
 - หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิก "ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน" เพื่อดูว่าชื่อที่ป้อนนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่
 - หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นสมาชิก ให้คลิก "ค้นหา" ผู้ดูแลระบบจะต้องลงทะเบียนองค์กรของคุณก่อนที่คุณจะสมัครลงทะเบียน
5. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เหลือแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

หมายเหตุ

หากคุณตกลงที่จะรับข้อมูลการตลาดระหว่างการลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Medit

6. อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ
7. เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้ลิงก์ที่ได้รับ

หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ

1. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณในหน้าเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


[Log In](#)

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. กล้องได้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลทางธุรกิจของคุณ

Welcome, stage-test-wh!

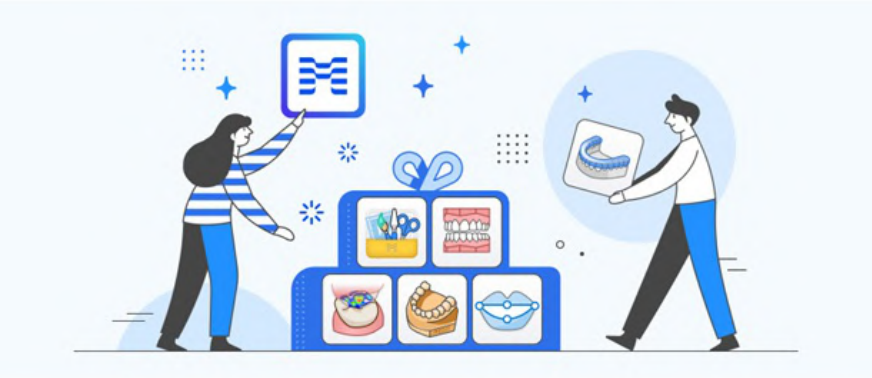

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

 **หมายเหตุ**


หากต้องการใช้บริการ Medit Link ต้องป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ

3. คลิกปุ่ม "ไปที่คลินิกของฉัน" หรือ "ไปที่ห้องแล็บของฉัน" และป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บ รวมถึงชื่อธุรกิจ ภาพปก/โลโก้ บริการที่คุณนำเสนอ ที่อยู่สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น
4. สามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกป้อนในหน้าต้อนรับได้ทุกเมื่อที่แท็บ My Info > คลินิกของฉันหรือห้องแล็บของฉัน ในเว็บไซต์ Medit Link

Dashboard

ภาพรวม Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

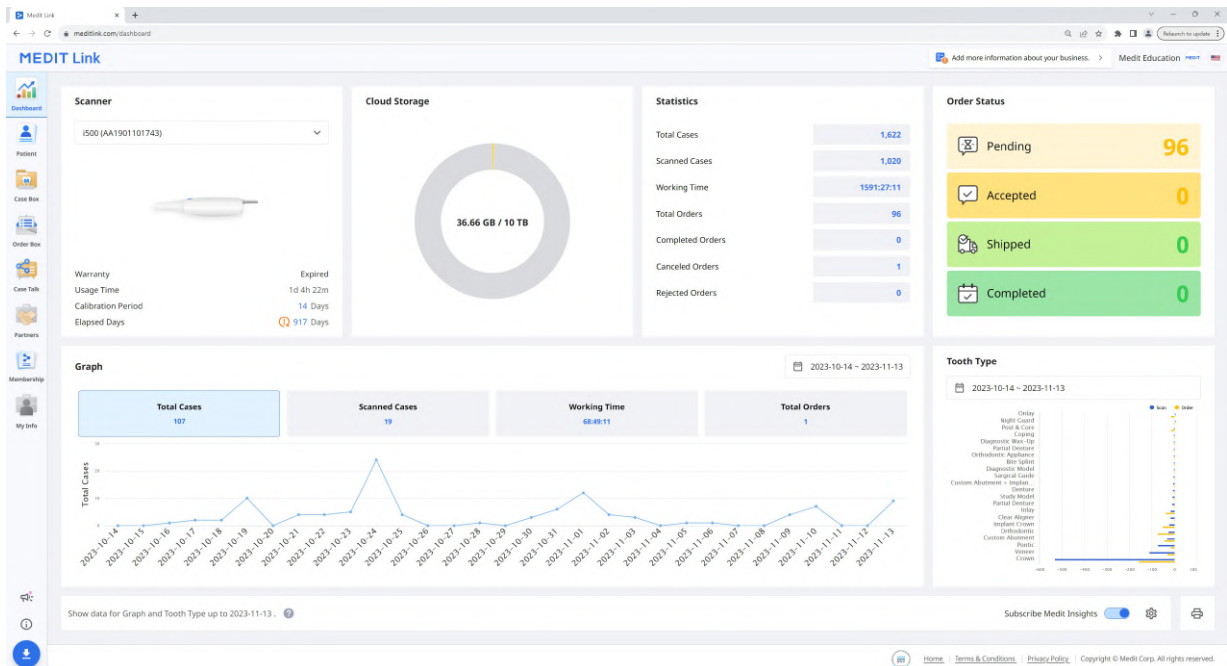

กราฟและแผนภูมิใน Dashboard แสดงสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำใน Medit Link

เครื่องสแกน	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการรับประกัน เวลาใช้งานเครื่องสแกน ช่วงเวลาทดสอบเทียบ และเวลาที่ผ่านไปของการทดสอบเทียบ
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	แสดงความจุทั้งหมดของคลาวด์และปริมาณการใช้งาน
สถิติ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะงาน
สถานะคำสั่งทำ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะคำสั่งทำ
กราฟ	แสดงกราฟข้อมูลงานตามช่วงเวลา
ประเภทฟัน	แสดงสถิติจำนวนการสแกนและคำสั่งทำตามข้อมูลการรักษา


Medit Insights

Medit Insights เป็นบริการรายงานที่ช่วยคุณวิเคราะห์สถิติการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- Medit Insights

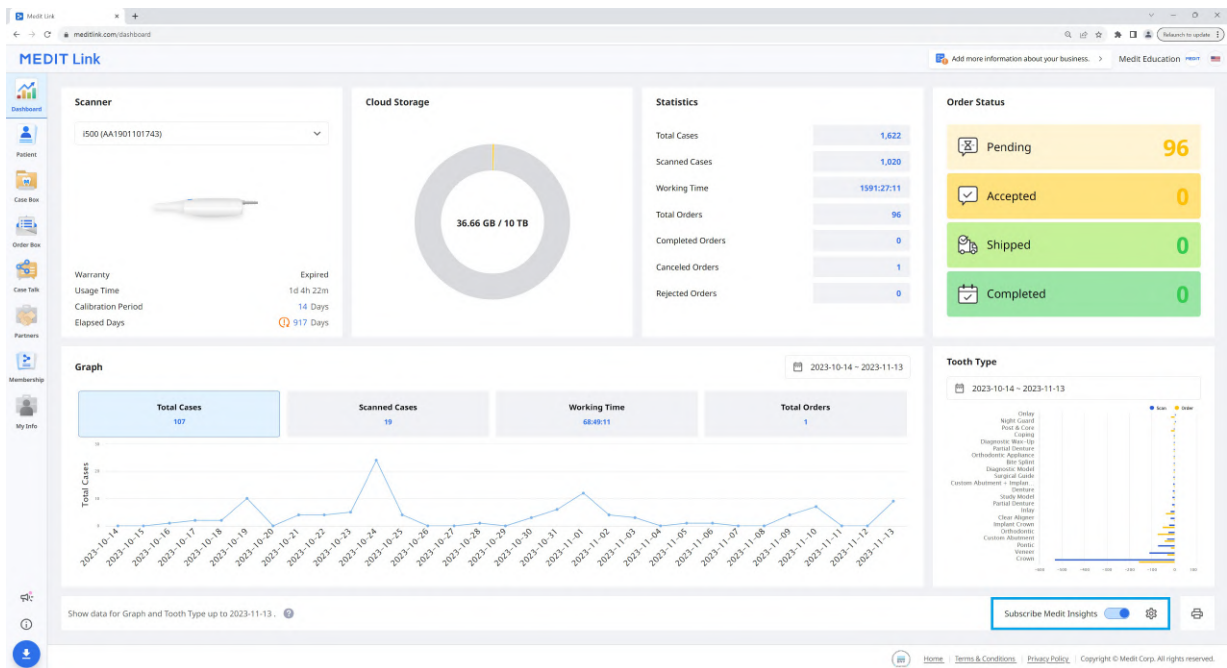

สมัครสมาชิก Medit Insights

คุณสามารถรับอีเมลรายงานได้ในวันที่สองของทุกเดือน ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการสมัครลงทะเบียนเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights"

หากคุณไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี Medit Link คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลอื่นเพื่อรับ Medit Insights ได้

Settings


Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

ทุกวันที่ 2 ของเดือน คุณจะได้รับอีเมลพร้อมสถิติดังที่แสดงด้านล่าง

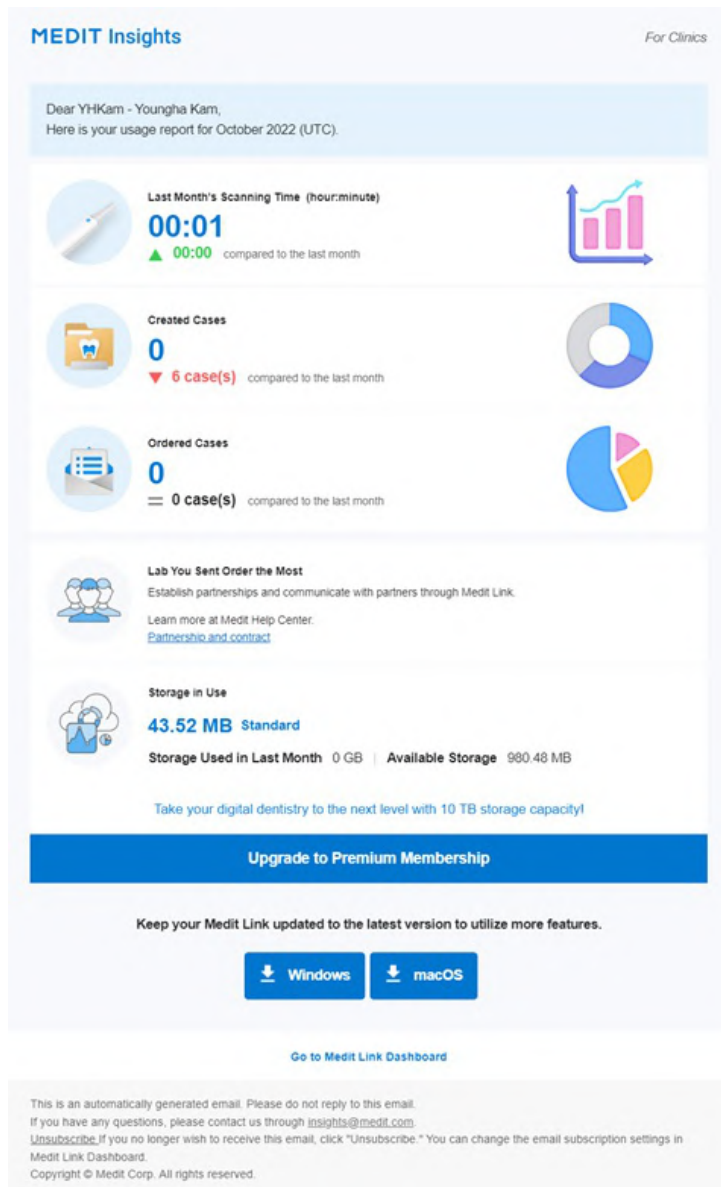

Banner	Medit เสนอเคล็ดลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นี่ * หากคุณไม่ต้องการเห็นแบนเนอร์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายข้อตกลงทางการตลาดและโปรโมชั่นใน My Info > บัญชีของฉัน
ข้อมูลทางสถิติ	ข้อมูลสถิติจะแสดง เช่น เวลาในการสแกน เคสที่ถูกสร้าง ห้องแล็บที่สั่งทำมากที่สุด เป็นต้น
ดาวน์โหลด Medit Link	ปุ่มนี้มีลิงก์ดาวน์โหลดของ Medit Link
Dashboard	ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล Dashboard ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Dashboard


ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights

ปิดการใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights" ใน Dashboard หรือคลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก" ในอีเมลที่ได้รับ

Patient

คุณสามารถจัดการเคสต่าง ๆ ตามชื่อผู้ป่วยและ ID ผู้ป่วยได้


ผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Medit Link จะถูกแสดงอยู่ในรายการ ทำให้การจัดการผู้ป่วยและเคสของพวกเขาง่ายขึ้น

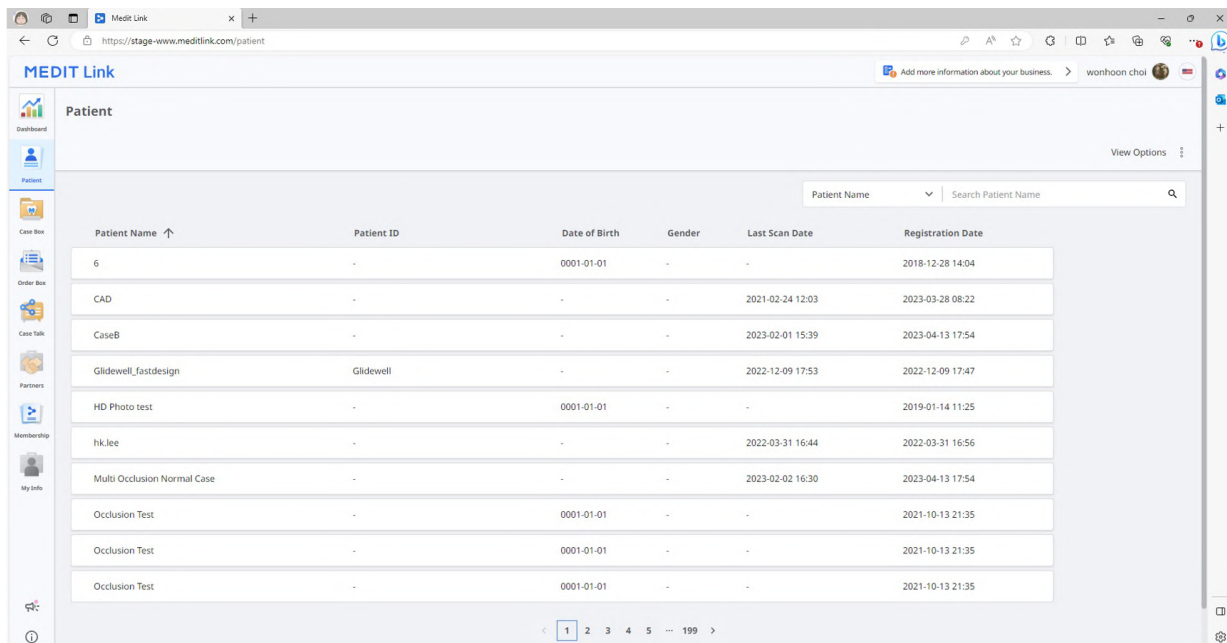

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
GlideWell_fastdesign	GlideWell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

ค้นหาผู้ป่วย


1. เลือกเกณฑ์การค้นหาของคุณระหว่างชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของรายชื่อผู้ป่วย

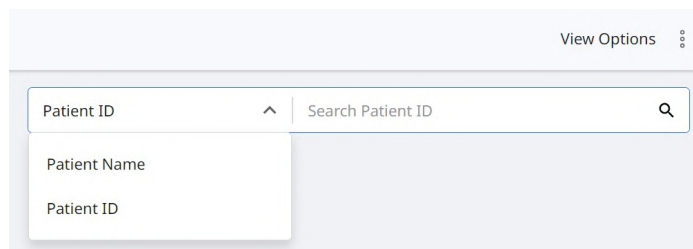

2. ป้อนชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยเพื่อค้นหาตามเกณฑ์การค้นหาที่เลือก
3. เฉพาะผู้ป่วยที่มีชื่อหรือ ID ผู้ป่วยที่ป้อนไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

Case Box/Work Box

Case Box (คลินิก) หรือ Work Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน Medit Link คุณสามารถดูไฟล์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก

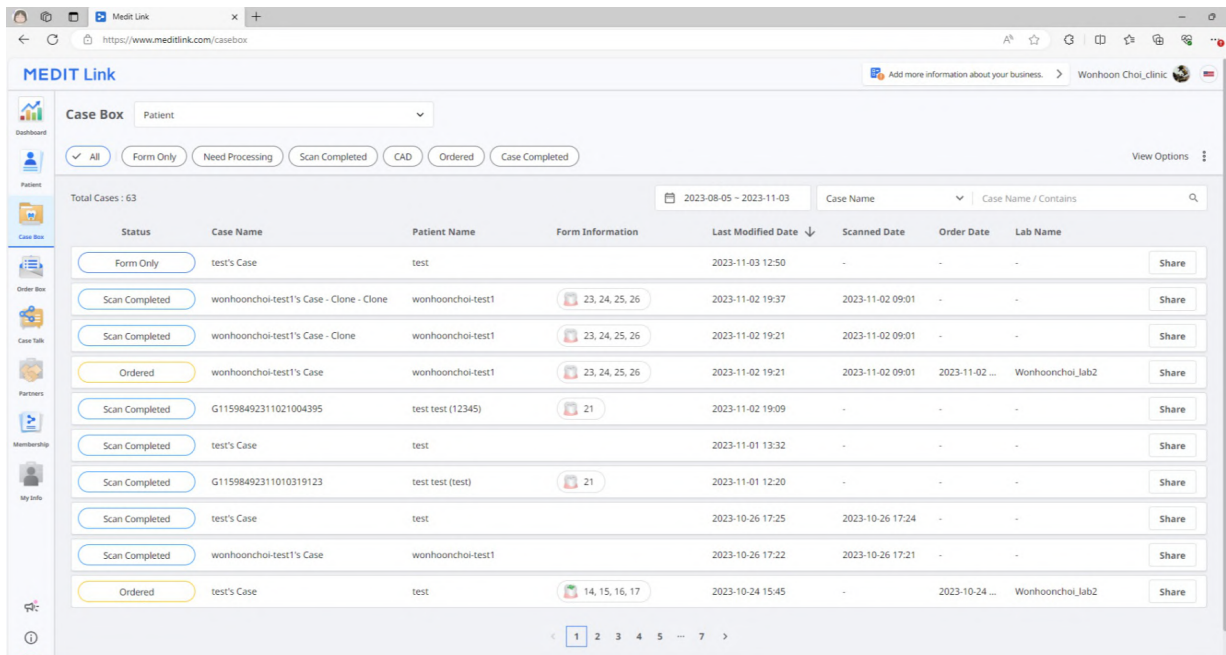


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

การกรองเคส

กรองตามผู้ป่วย

คุณสามารถกรองเคสตามผู้ป่วยได้ มันมีประโยชน์เมื่อคุณค้นหาเคสสำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง

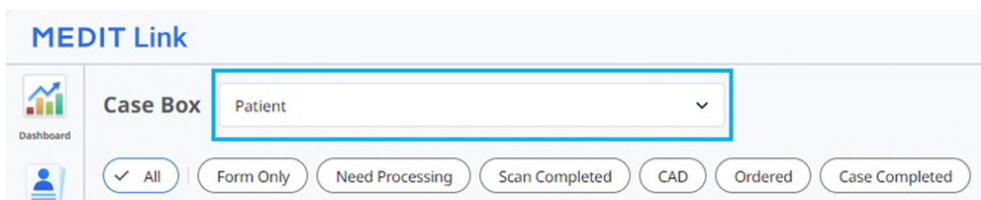


MEDIT Link

Case Box Patient

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. ป้อนชื่อผู้ป่วยในช่องค้นหา

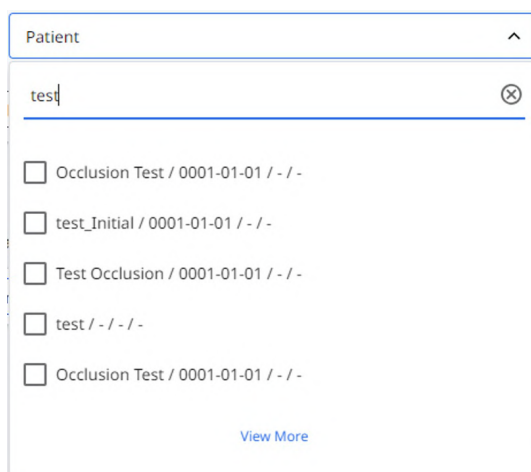

Patient

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. เลือกผู้ป่วยจากรายการผลการค้นหา

3. เฉพาะเคสสำหรับผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเคสที่คุณต้องการทำงานด้วย

กรองตามสถานะ

All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- ประเภทสถานะต่อไปนี้จะจัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (ห้องแล็บ)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

กรองตามระยะเวลา

คุณสามารถกรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. เลือกช่วงเวลา

Last 30 Days

From

 2020-08-21

To

 2020-09-20

- ทั้งหมด: แสดงเคสทั้งหมด
- ระยะเวลาที่กำหนดเอง: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงเคสที่ถูกแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว
- วันนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดวันนี้
- เมื่อวาน: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อวาน
- 7 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- 30 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- 90 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โดยไม่รวมวันนี้
- เดือนนี้: แสดงเคสของเดือนนี้
- เดือนก่อนหน้า: แสดงเคสของเดือนก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

กรองตามการค้นหา

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Case Name


Case Name / Contains



ตัวเลือกการค้นหาต่อไปนี้จัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ
Work Box (ห้องแล็บ)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ

รายละเอียดเคส

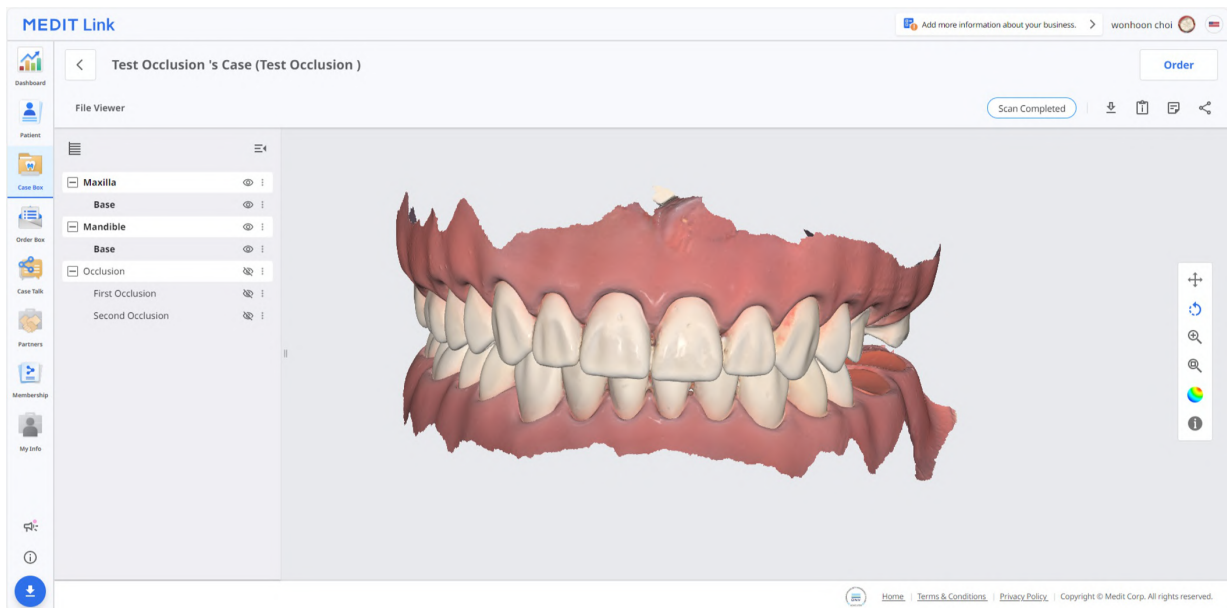

มีเครื่องมือการจัดการเคสต่อไปนี้อยู่ใน Case Box/Work Box

	สถานะเคส	แสดงสถานะของเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

Order Box/In Box

Order Box (คลินิก) หรือ In Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสที่ถูกสั่งทำในแอปพลิเคชัน Medit Link

รายละเอียดคำสั่งทำ

The screenshot shows the 'Order Box' interface in the Medit Link application. It displays order details for 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' with order ID 5996137. The interface includes fields for Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. A 'Cancel Order' button is visible. On the right, an 'Order List' table shows four items (No. 23-26) with details like Type (Inlay), Method, Material, and Shade.

- | | |
|---|--|
| 1 | แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย |
| 2 | ให้ฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งทำ (การยอมรับ/การยกเลิก; การส่งมอบ/การรับ) |
| 3 | แสดงแท็บที่มีอยู่: คำสั่งทำ โปรแกรมดูไฟล์ |
| 4 | แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์: สถานะของเคส, ทางลัดสำหรับข้อมูลโดยละเอียด, ข้อมูลเคส, บันทึก และแท็ก เป็นต้น |
| 5 | แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ รวมถึงหมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อพันธมิตร วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ และบันทึกและแท็ก |
| 6 | แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำและสถานะการส่งมอบ |


แท็บใน Order Box/In Box

คำสั่งทำ	โปรแกรมดูไฟล์
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ เช่น ID คำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อบัญชี วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ บันทึกและแท็ก	ดูไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการสแกน/CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลเฉพาะที่คุ้นเคย ทุกคนที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน "Case Talk" ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

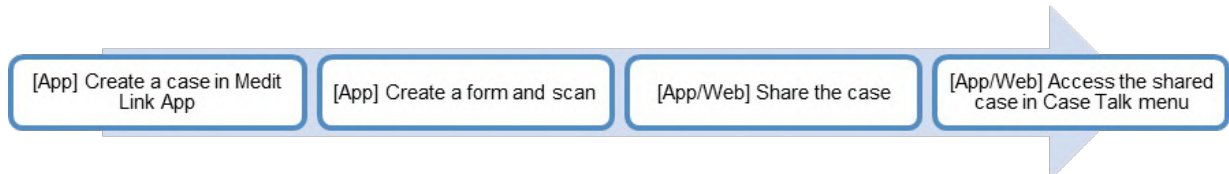


สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย


การสร้าง Case Talk

คุณสามารถสร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังเคสที่สร้างขึ้นใน Case Box/Work Box ได้

1. ค้นหาเคสที่คุณต้องการแชร์และคลิกปุ่ม "แชร์" ทางด้านขวา

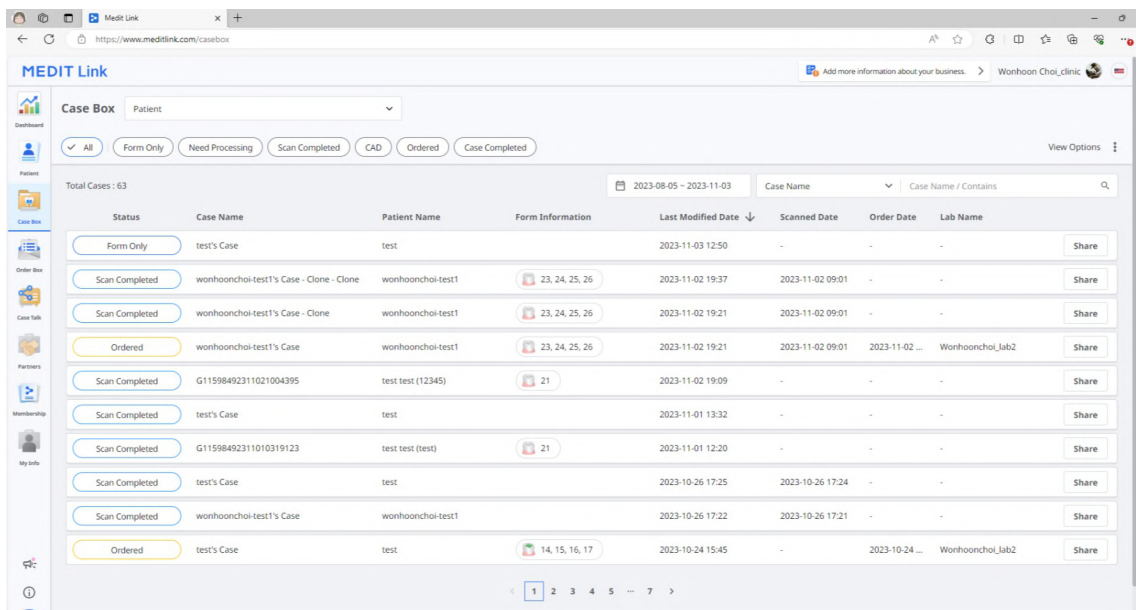

2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแชร์

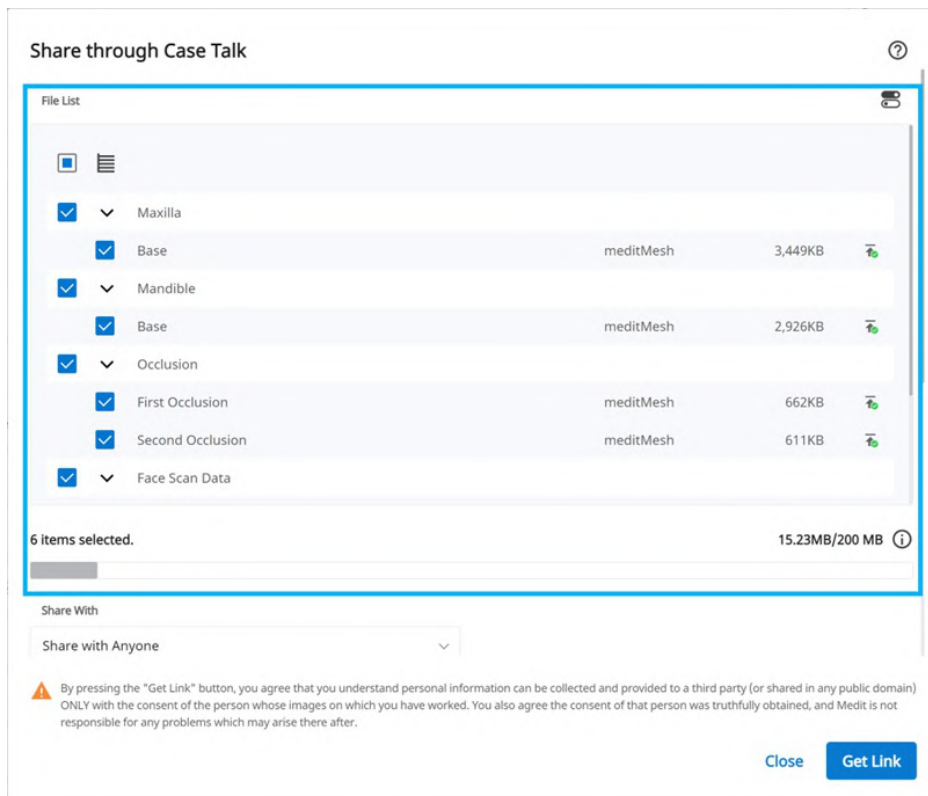


3. ตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์
4. คลิก "รับลิงก์" เพื่อสร้างลิงก์ที่ถูกรับ

การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์

แชร์กับ	• แชร์กับใครก็ตาม สร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ คุณสามารถแชร์ไฟล์กับใครก็ได้ • แชร์กับบุคคลเฉพาะ สร้างและส่งลิงก์ที่แชร์ไปยังบุคคลเฉพาะ
แชร์ทาง	หากคุณเลือก "แชร์กับบุคคลเฉพาะ" คุณสามารถแชร์ลิงก์กับบุคคลเฉพาะได้หลายวิธี • ที่อยู่อีเมล • SMS • พันธมิตร
วันหมดอายุ	กำหนดวันหมดอายุของลิงก์ หลังจากທີ່ลิงก์หมดอายุ คนที่คุณแชร์ด้วยจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อีกต่อไป คุณสามารถขยายระยะเวลาหมดอายุได้ถึง 90 วันนับจากวันนี้
รหัส PIN	ตั้งรหัสการเข้าถึง 6 หลักเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
แชร์ชื่อผู้ป่วย	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ทุกคนที่มีลิงก์จะเห็นชื่อของผู้ป่วย
ให้อนุญาตการดาวน์โหลด	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ทุกคนที่มีลิงก์จะดาวน์โหลดไฟล์ได้
อนุญาตความคิดเห็น	• หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถสื่อสารผ่านลิงก์ที่ถูกแชร์ได้ • หาก你不ทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้รับจะสามารถดูได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นของตนเองได้
ความคิดเห็น	คุณสามารถฝากข้อความไว้ในเซกชันความคิดเห็นได้

คุณสามารถดูไฟล์ในเคสที่ถูกแชร์ได้ มีฟังก์ชันต่อไปนี้อยู่ในหน้ารายละเอียด Case Talk

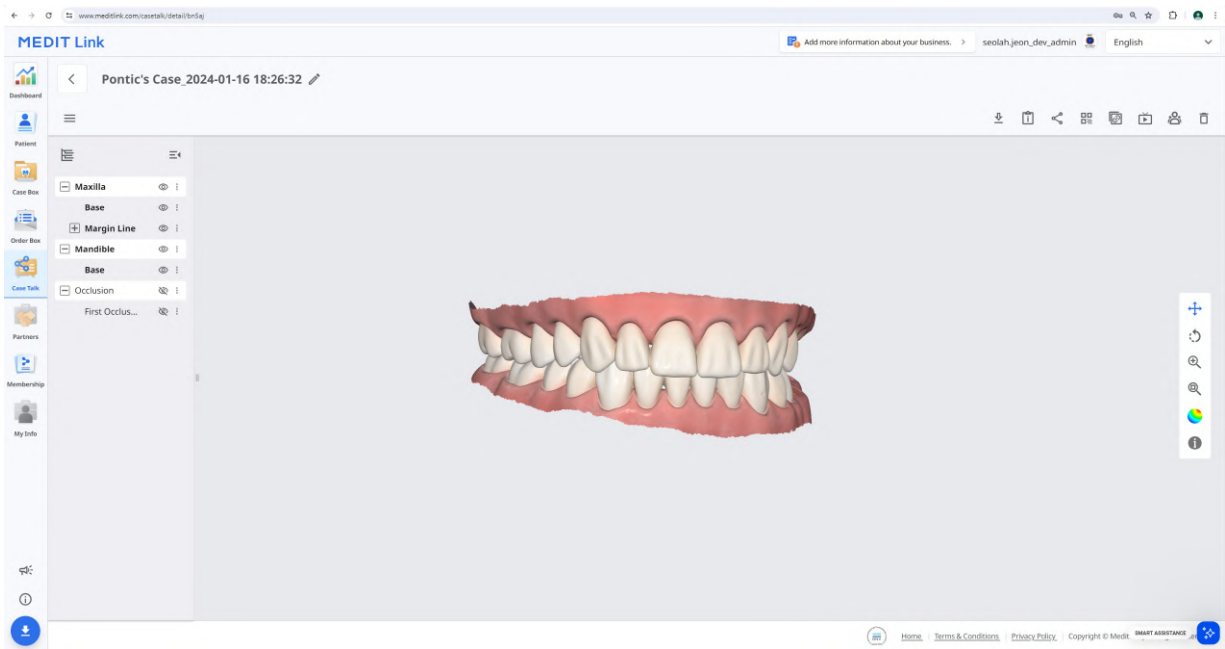

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	แชร์เคสนี้ด้วยรหัส QR
	คัดลอกลิงก์	คัดลอกลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังคลิปบอร์ด ลิงก์ที่ถูกคัดลอกจะแสดงไฟล์ที่ถูกแชร์บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกซิงโครไนซ์กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงลิงก์ที่ถูกแชร์
	ลบ	ลบลิงก์ที่ถูกแชร์ จะไม่สามารถเข้าถึงลิงก์ที่แชร์ซึ่งถูกลบได้อีกต่อไป

หมายเหตุ


บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม

Web Viewer

คุณสามารถดูข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่าน Case Talk ได้ในเว็บเบราว์เซอร์

สามารถสื่อสารกับผู้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์ได้โดยใช้คำอธิบายประกอบและความคิดเห็น

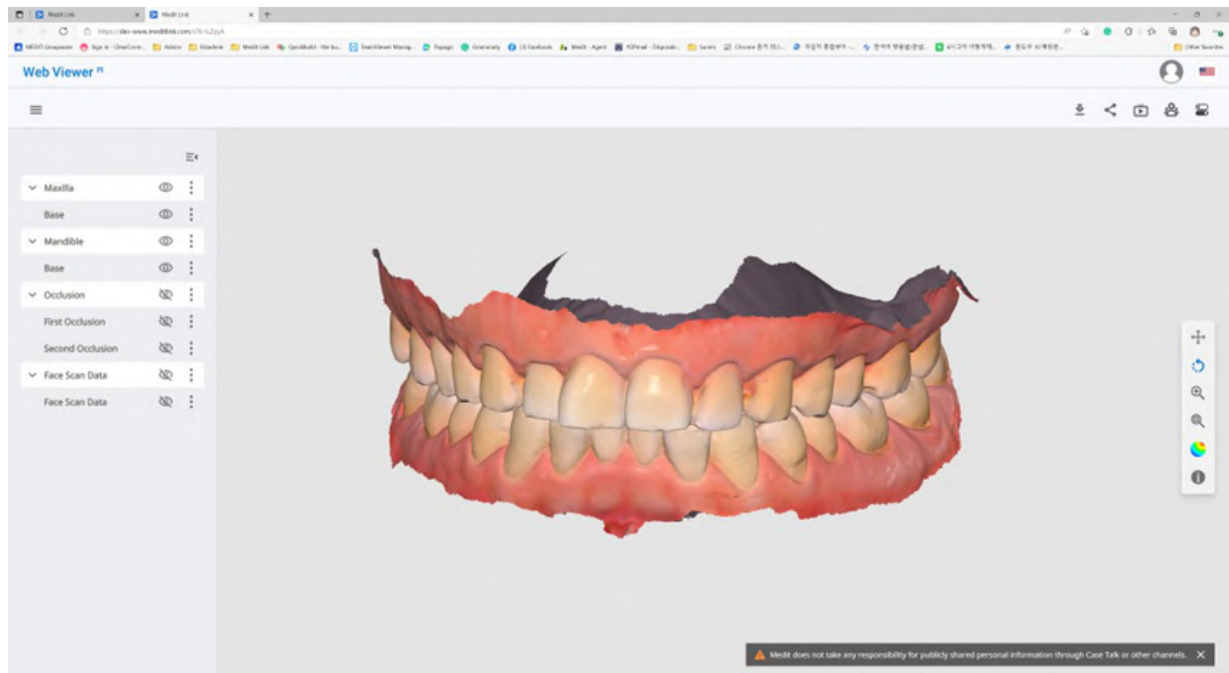

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังพีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	คัดลอกลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังคลิปปอร์ด ลิงก์ที่ถูกคัดลอกจะแสดงไฟล์ที่ถูกแชร์บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ที่ใช้เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกขังโครโนซ์กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์
	การตั้งค่าการโต้ตอบ	เปลี่ยนระบบการโต้ตอบกับฟัน


หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม

คำอธิบายประกอบ

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในโมเดล 3D ได้ ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถดูคำอธิบายประกอบที่คุณเพิ่มได้

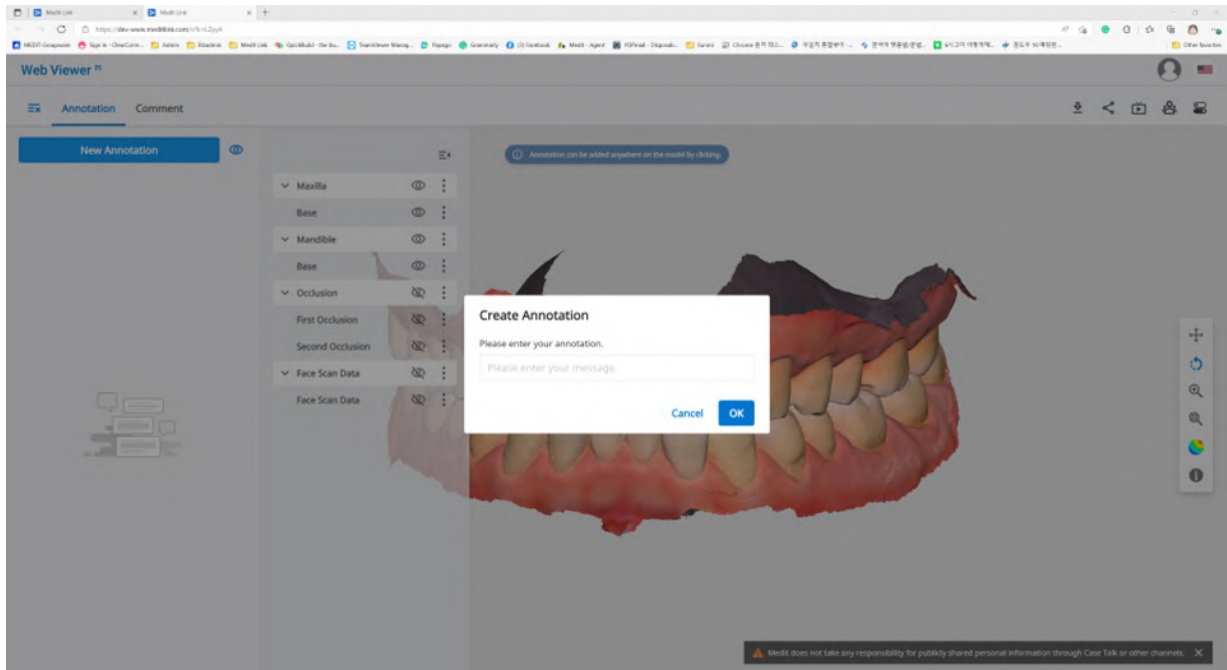

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- คำอธิบายประกอบ

1. ค้นหาไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกแท็บ "คำอธิบายประกอบ" ไขปุ่ม "คำอธิบายประกอบใหม่" เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่ได้ก็ได้บันทึกข้อมูลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
2. พิมพ์ข้อความ จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก

This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. คุณสามารถใช้คำอธิบายประกอบเป็นช่องทางการสื่อสารง่าย ๆ ได้ คลิกคำอธิบายประกอบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้อนการตอบกลับและกด "ส่ง"

This image shows a chat window for an annotation. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below that is 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

ความคิดเห็น

คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์ได้ผ่านแท็บ "ความคิดเห็น" ในเมนู Web Viewer

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- ความคิดเห็น

การแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์

คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณแบบเรียลไทม์ได้

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด

1. คลิก "สด" เพื่อแชร์หน้าจอ Web Viewer ของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ




2. คลิก "ตกลง" เพื่อเริ่มต้นแชร์หน้าจอของคุณ
3. บุคคลอื่นที่เข้าถึงลิงก์จะต้องยอมรับการแชร์หน้าจอ
4. หน้าจอของผู้ใช้ที่เริ่มการแชร์หน้าจอจะถูกแสดงโดยซิงค์กับหน้าจอของผู้ที่ได้รับค่าขอ



แผนผังข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มและถูกแสดงตามคุณลักษณะในแผนผังข้อมูล คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูล ปรับความทึบ และอื่น ๆ ได้

การควบคุมแผนผังข้อมูล

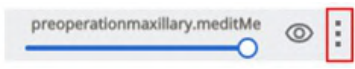แสดง/ซ่อน	คลิกไอคอนรูป 'ดวงตา' เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลจากมุมมอง ควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เป็นกลุ่มหรือแต่ละไฟล์
ความทึบ	วางเมาส์เหนือองค์ประกอบที่มองเห็นได้เพื่อดูแถบสไลด์ความทึบ ปรับแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของข้อมูล 
เมนูแบบขยาย	มีเมนูแบบขยายอยู่ทางด้านขวาของแต่ละองค์ประกอบแผนผังข้อมูล มันประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:  • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นข้อมูลปัจจุบัน • ซ่อน: ซ่อนข้อมูลปัจจุบัน

การควบคุมโมเดล 3D

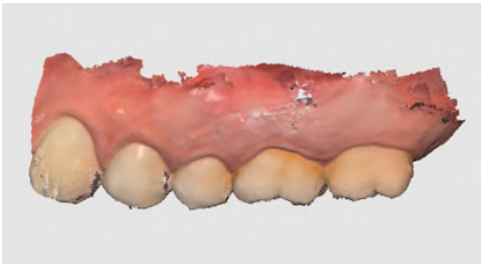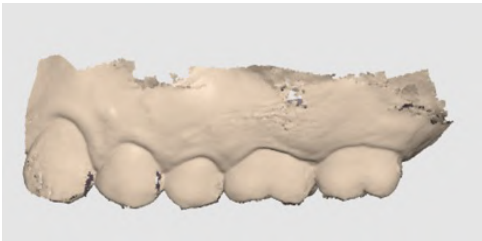	แพน	ย้ายโมเดล
	หมุน	หมุนโมเดล
	ซูมเข้า/ออก	ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
	ซูมปรับพอดี	จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
	โหมด แสดง โมเดล	เปิดพื้นผิว แสดงข้อมูลด้วยสีพื้นผิวจริง 
		ปิดพื้นผิว แสดงข้อมูลในสีเดียว 

Partners

คุณสามารถค้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อขอเป็นพันธมิตรและดูรายชื่อพันธมิตรปัจจุบันได้


หมายเหตุ

บริการที่ใช้ Google Maps ไม่พร้อมให้บริการบน Medit Link China

ค้นหาพันธมิตร


คุณสามารถค้นหาผู้ใช้ Medit Link ได้ตามชื่อธุรกิจและ/หรือที่อยู่ของพวกเขา

ในผลการค้นหา คุณสามารถส่งคำขอเป็นพันธมิตรไปยังธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วยได้

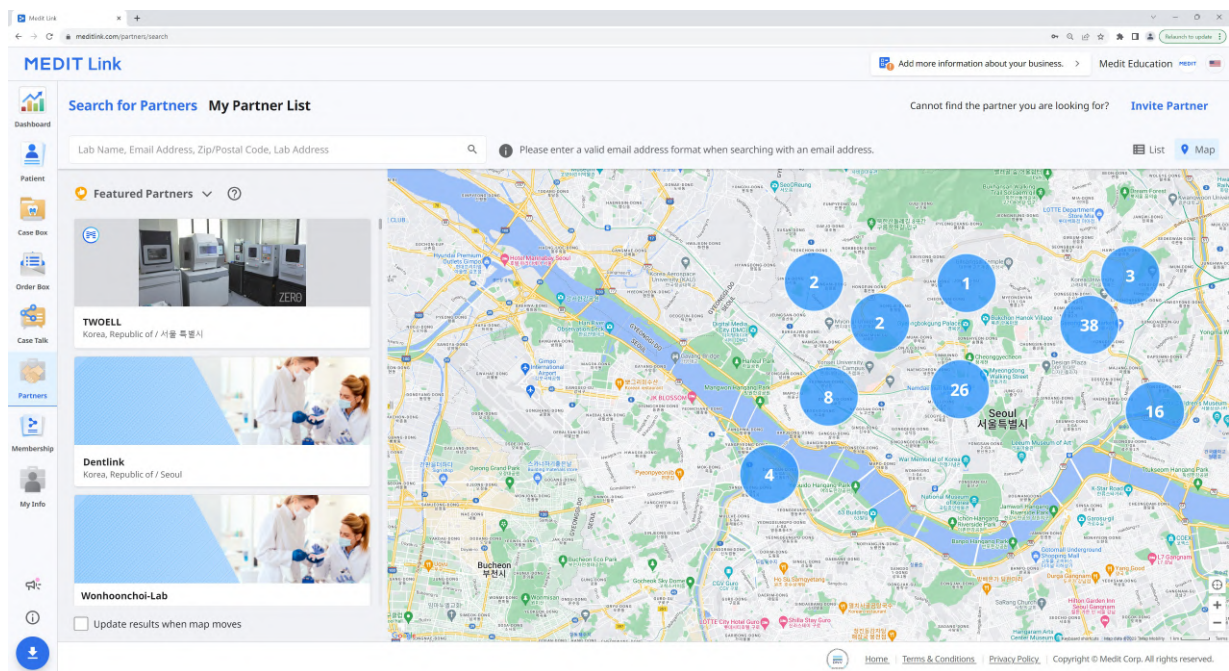

รายชื่อพันธมิตรของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบการเป็นพันธมิตรปัจจุบันของคุณกับธุรกิจพันธมิตรที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในรายชื่อพันธมิตรของฉัน

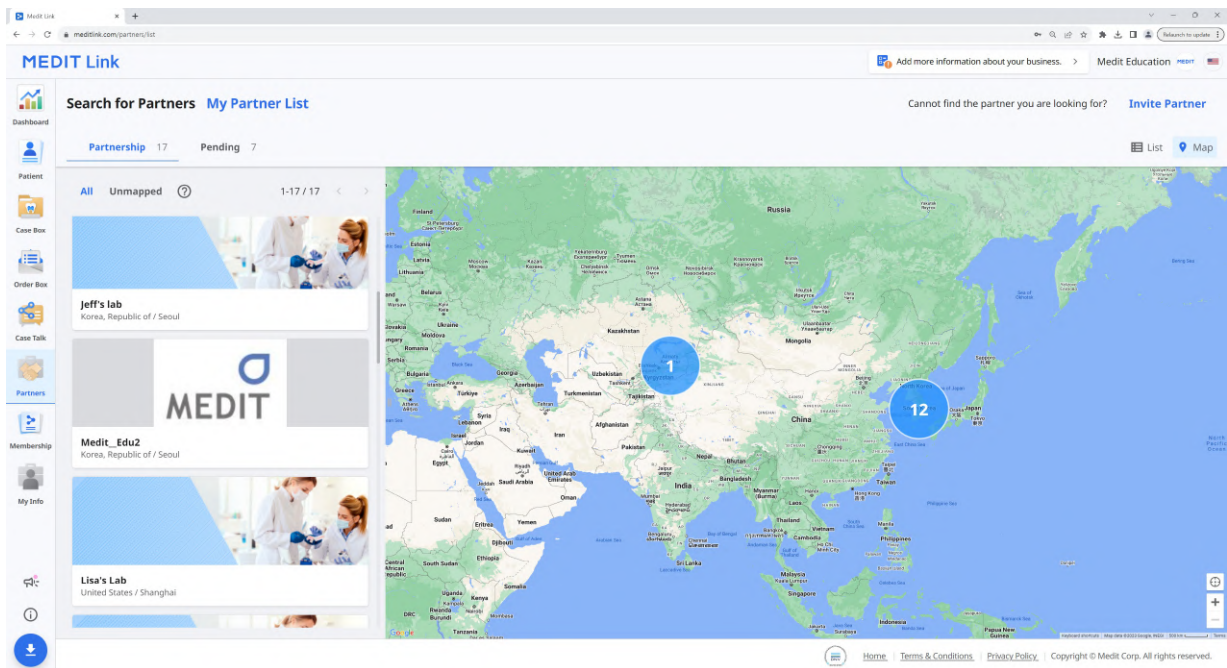

ค่าเชิญเป็นพันธมิตร

หาก你有คลินิกหรือห้องแล็บที่ต้องการร่วมงานด้วย คุณสามารถเชิญพวกเขาให้เข้าร่วม Medit Link ได้ การเป็นพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขายอมรับค่าเชิญ

1. คลิก "เชิญพันธมิตร" ที่ด้านบนของหน้าจอ
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วย และส่งค่าเชิญพร้อมกับคำขอเป็นพันธมิตร



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. เมื่อองค์กรที่ได้รับเชิญยอมรับค่าเชิญและสมัครลงทะเบียนสำหรับ Medit Link การเป็นพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ


Membership

การเป็นสมาชิก

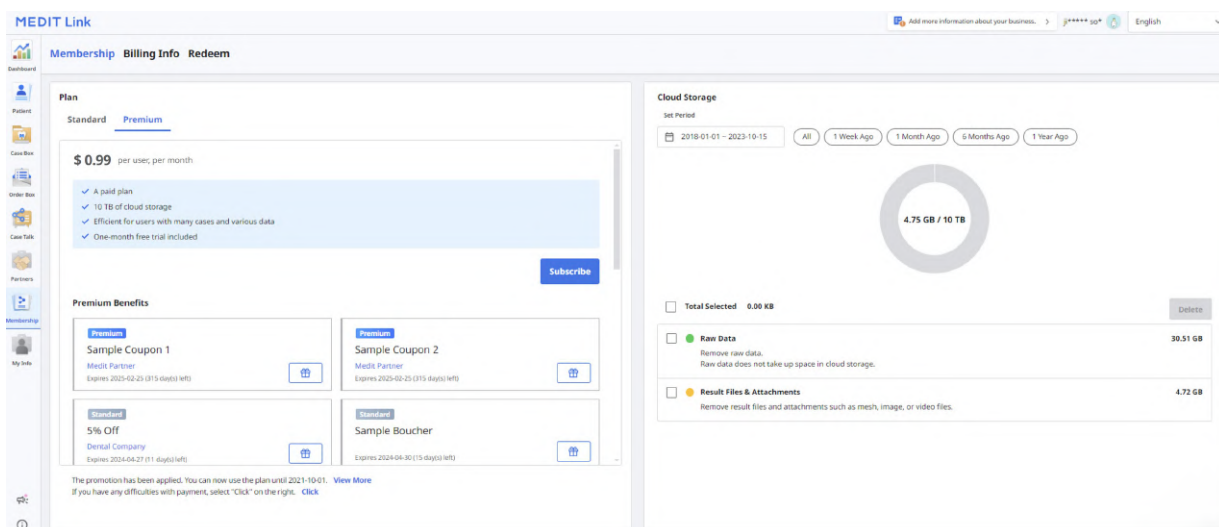

แผน

คุณสามารถดูสิ่งที่แผนแต่ละแผนนำเสนอ ซึ่งรวมถึงคูปองส่วนลดและบัตรกำนัล และสถานะการเป็นสมาชิกของคุณในปัจจุบัน คุณสามารถอัปเดตแผนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา

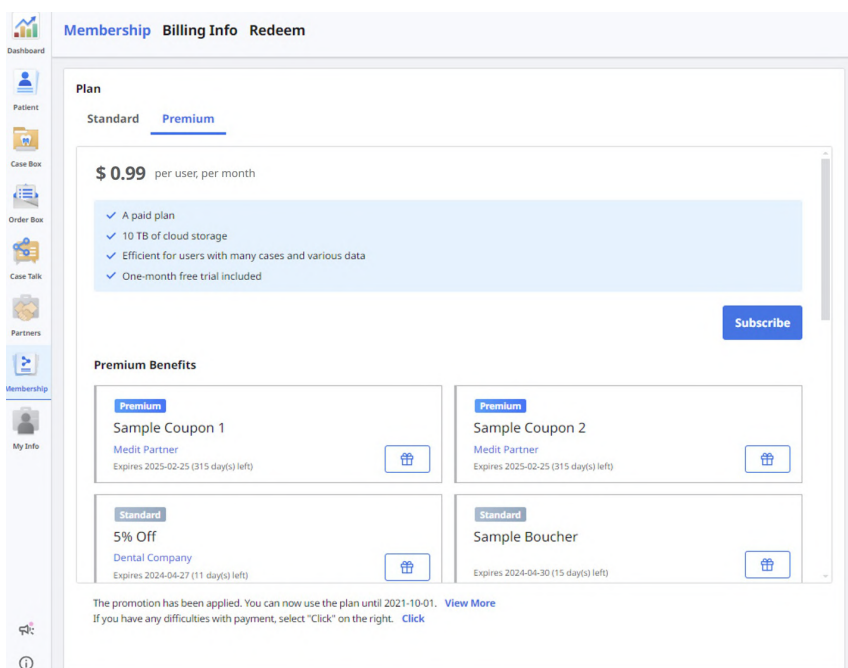

Medit Link มีแผนการเป็นสมาชิกดังต่อไปนี้:

Standard

- แผนมาตรฐานฟรีสำหรับผู้ที่ใช้เข้าสู่ระบบทุกคน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 GB
- สำหรับผู้ใช้ใหม่

Premium

- แผนแบบชำระเงิน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 TB
- สำหรับผู้ใช้ที่มีหลายเคสและข้อมูลหลากหลาย
- ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน


	Standard	Premium
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	1 GB	10 TB
ค่าธรรมเนียมรายเดือน	ไม่เสียเงิน	\$0.99/เดือน
* พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่นับรวมพื้นที่ที่เก็บข้อมูลดิบ		

หมายเหตุ

มีแผนการเป็นสมาชิกอยู่ใน Medit Link China คุณสามารถรับแผน Premium ได้ฟรีจนกว่าจะมีการเปิดตัวคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในเซกชันด้านขวา คุณสามารถจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้

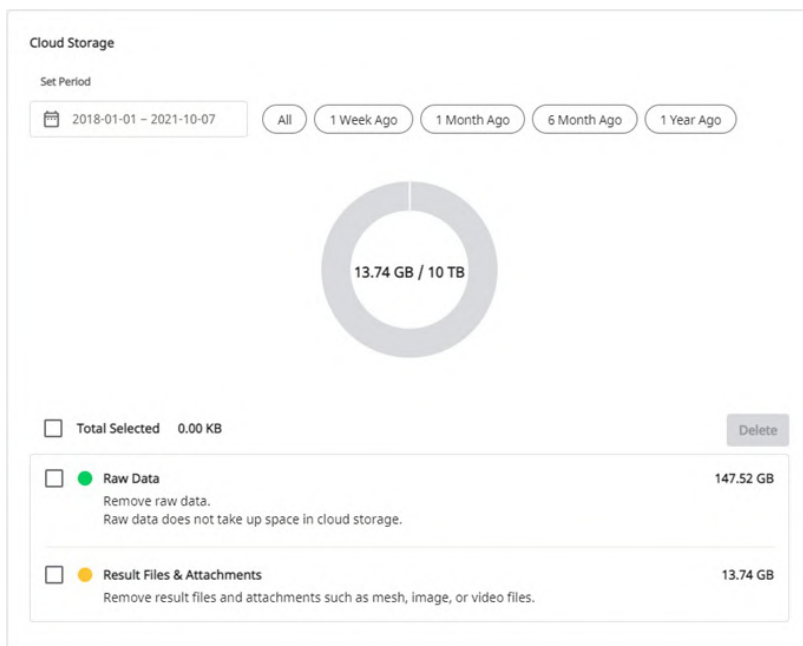


กำหนดระยะเวลา	กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าว • ทั้งหมด: ดูไฟล์ทั้งหมด • 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสร้าง • 1 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนหลังจากการสร้าง • 6 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหกเดือนหลังจากการสร้าง • 1 ปีที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไปแล้วหนึ่งปีหลังจากการสร้าง
ข้อมูลดิบ	ข้อมูลดิบไม่ใช่พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นมันจะไม่อยู่ในแผนภูมิวงกลม แต่คุณสามารถจัดการข้อมูลดิบได้จากที่นั่นหากจำเป็น เช่น ลบมันออกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นต้น
ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบใช้พื้นที่บนคลาวด์ หากคลาวด์เต็ม คุณสามารถรักษาความปลอดภัยพื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้ออกจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มพื้นที่

สมัครสมาชิก


หากในปัจจุบันคุณใช้แผน Standard หรือแผน Premium พร้อมรหัสแลกรับ คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของแผน Premium ได้

การชำระเงินผ่านบริการ Stripe (www.stripe.com) ได้เสร็จสิ้น

1. ไปที่ การเป็นสมาชิก > แผน > Premium แล้วคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"

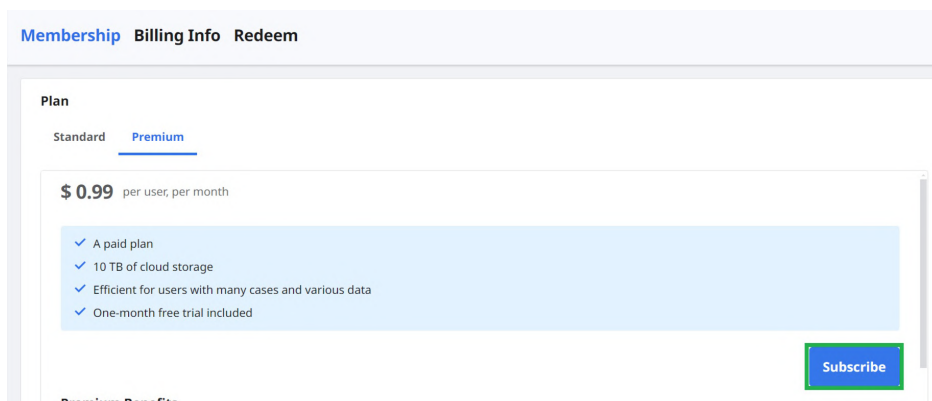

2. ตรวจสอบคำอธิบายแผน Premium แล้วคลิก "สมัครสมาชิก" อีกครั้ง

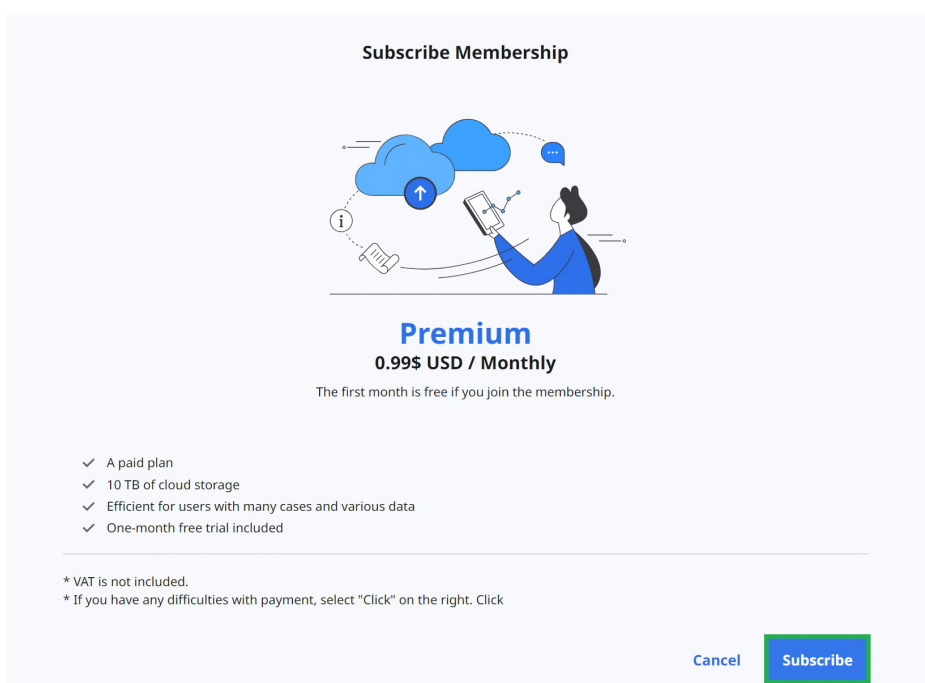

3. ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขและข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงิน จากนั้นคลิก "สมัครสมาชิก"

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic **\$0.99**
Medit Link Membership
Billed daily

Subtotal **\$0.99**

1 MONTH FREE – for first subscription **-\$0.99**
100% off for a day

Total due today **\$0.00**

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with **link** ⇒

Or pay with card

Email **yhgam0829@gmail.com**

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA **MasterCard** **Amex** **Apple Pay**

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

☐ **Securely save my information for 1-click checkout**
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

4. การชำระเงินอาจใช้เวลาหลายวินาที เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยัน

Subscribe Membership



Payment Successful.


[Invoice](#)

[Close](#)


ยกเลิกการสมัครสมาชิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา หลังจากที่ยกเลิกการสมัครสมาชิก คุณยังคงสามารถใช้การเป็นสมาชิก Premium ได้ในวันที่เหลือของเดือนที่ชำระเงินนั้น แผนของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็น Standard นับจากวันชำระเงินถัดไป และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะถูกจำกัดไว้ที่ 1 GB หากเกินความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไฟล์จะไม่ได้รับการสำรอง และฟังก์ชันคำสั่งท่าและการแชร์จะไม่พร้อมใช้งาน

1. คลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก"
2. คลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก"

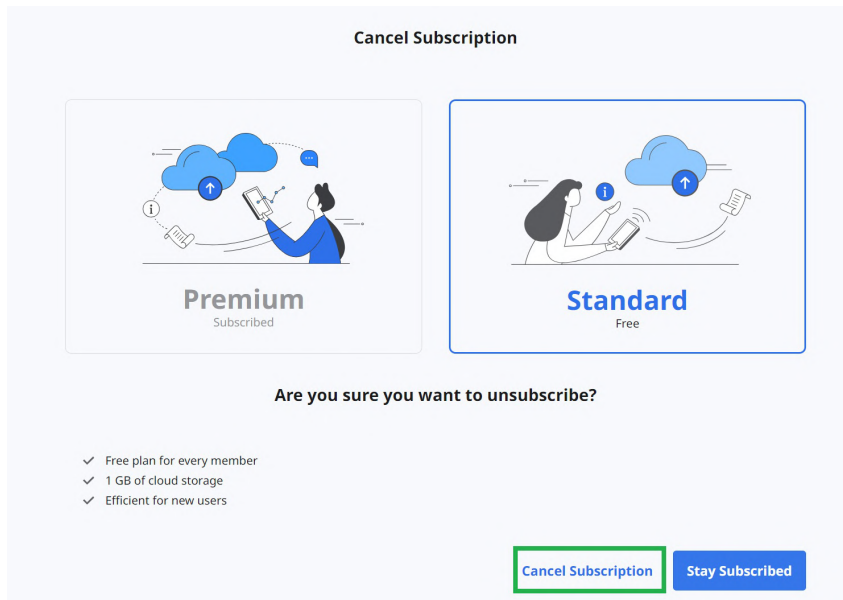

3. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก ให้คลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก" อีกครั้งในหน้าต่างป๊อปอัพใหม่

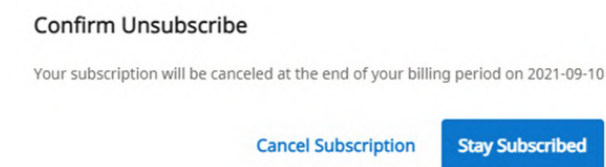

4. การสมัครสมาชิกของคุณได้ถูกยกเลิกแล้ว
5. แผนของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็น Standard นับจากวันชำระเงินถัดไป และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะถูกจำกัดไว้ที่ 1 GB หากเกินความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไฟล์จะไม่ได้รับการสำรอง และฟังก์ชันคำสั่งทำและการแชร์จะไม่พร้อมใช้งาน



ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการชำระค่าสมัครสมาชิก รวมถึงใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินแต่ละครั้งได้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่การชำระเงินตามกำหนดครั้งถัดไป

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

วิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน

1. คลิก "แก้ไขวิธีการชำระเงิน"

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. คลิก "เพิ่มวิธีการชำระเงิน"

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

 **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้วคลิก "เพิ่ม"

Add payment method

Card information

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. วิธีการชำระเงินที่ถูกเพิ่มใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและถูกใช้สำหรับการชำระเงินครั้งถัดไป

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

1. คลิกไอคอนเมนูแบบขยายถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนในหน้าต่างโต้ตอบการเรียกเก็บเงิน

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

- คลิก "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" เพื่อตั้งค่าบัตรเครดิตที่เลือกเป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้น

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

Make default

Delete


BILLING INFORMATION

แลกรับ

ลงทะเบียนรหัสแลกรับที่ให้ไว้ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น คุณสามารถใช้การเป็นสมาชิก Premium ร่วมกับรหัสแลกรับได้

ลงทะเบียนรหัสแลกรับ

- กรอกรหัสแลกรับ และคลิก "ลงทะเบียน"

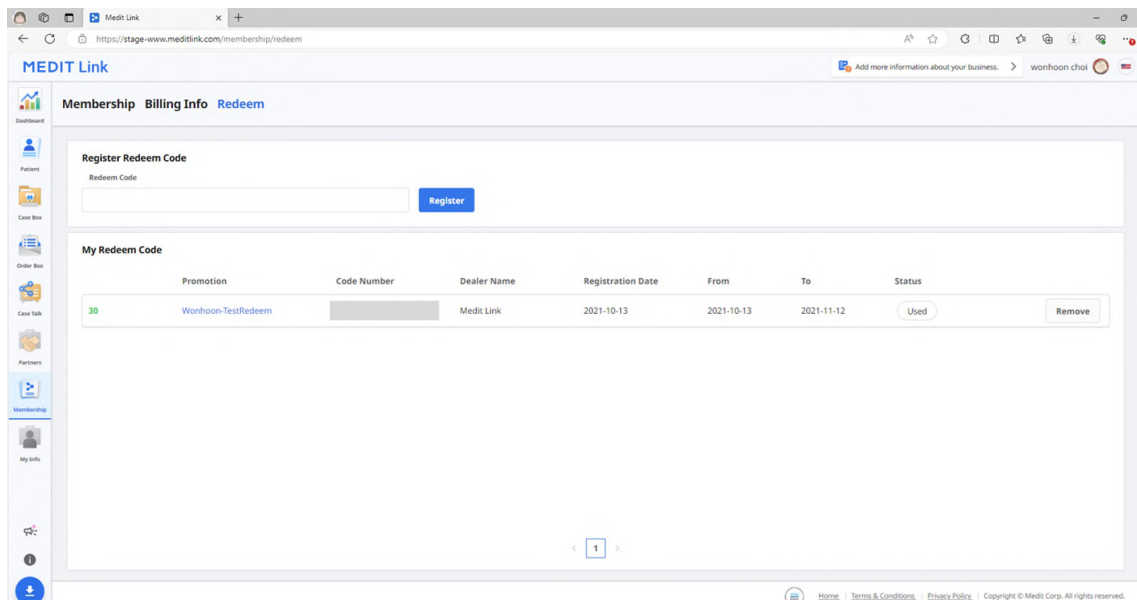

2. อ่านประกาศและเลือก "ลงทะเบียน" หรือ "ใช้" ในกล่องโต้ตอบป๊อปอัพ

- ลงทะเบียน: ลงทะเบียนรหัสแลกรับ คุณสามารถเปิดใช้งานและใช้รหัสแลกรับได้ในภายหลังหลังจากการลงทะเบียน
- ใช้: ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสแลกรับ ส่วนลดโปรโมชั่นจะมีผลในทันที

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

เปิดใช้งานรหัสแลกรับ

คุณสามารถลงทะเบียนรหัสแลกรับได้หลายรหัส แต่คุณต้องเปิดใช้งานรหัสแลกรับที่คุณต้องการใช้

- คลิกปุ่ม "เปิดใช้งาน" ที่อยู่ถัดจากรหัสที่คุณต้องการใช้
 - หากไม่มีรหัสที่มีสถานะ "Activated" รหัสที่คุณเลือกจะถูกใช้ในทันที
 - หากมีรหัสที่ถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว รหัสที่ถูกเลือกใหม่จะเปลี่ยนเป็นสถานะ "Waiting" เมื่อรหัสแลกรับที่ถูกเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหมดอายุ รหัสแลกรับใหม่ในสถานะ "Waiting" จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

สามารถเปิดใช้งานรหัสแลกรับได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น และมีเพียงรหัสเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในสถานะ "Waiting"

My Info

บัญชีของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะสมาชิกของคุณได้

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account

My Clinic

My Scanner



MEDIT
2022 Trusted Lab
Partner of MEDIT

Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English

Country/Region

Korea, Republic of

🔔 Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกหรือห้องแล็บของคุณได้ เซกชันนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

เครื่องสแกนของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อสำหรับบัญชีได้

MEDIT Link

Add more information about your business.

seolahjeon

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

50

เมนูอื่น ๆ

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก Medit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ Medit Link เข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาและข้อมูลของ Medit เช่น Medit Academy, Medit Academy YouTube และศูนย์ช่วยเหลือ Medit

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

ดาวน์โหลดแอป Medit Link

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บ เมนูนี้มีประโยชน์เมื่อคุณสูญเสียตัวติดตั้งที่นำมาในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ หรือคุณมีตัวติดตั้งที่ล้าสมัย

หมายเหตุ

Medit Link จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

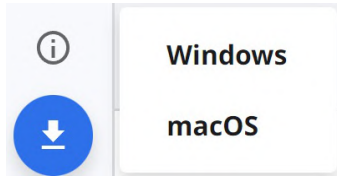

ภาพรวม

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	แถบชื่อเรื่อง	ดูที่ แอป Medit Link > แถบชื่อเรื่องสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
2	เมนู	ดูที่ แอป Medit Link > เมนูสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
3	เครื่องมือและฟังก์ชัน	ดูที่ แอป Medit Link > โปรแกรมดูไฟล์ และ แอป Medit Link > ตัวเลือกมุมมองสำหรับข้อมูลโดยละเอียด
4	รายการเคส	ดูที่ แอป Medit Link > การกรองและการค้นหาเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท

ประเภทบัญชี		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
บัญชีคลินิก	ผู้ดูแลระบบ	O	O	O	X	X	O	O	O
	สมาชิก	O	O	O	X	X	O	O * คุณสมบัติการคืนค่าเท่านั้น	O
บัญชีห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	X	X	X	O	O	O	O	O
	สมาชิก	X	X	X	O	O	O	O * คุณสมบัติการคืนค่าเท่านั้น	O

แถบชื่อเรื่อง

แถบชื่อเรื่องช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลบัญชี การแจ้งเตือน ประกาศและการอัปเดต การตั้งค่า และสถานะเครือข่าย



ข้อมูลของฉัน

ข้อมูลของฉันประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้พื้นฐาน เช่น รูปโปรไฟล์ ชื่อคลินิกหรือห้องแล็บ ที่อยู่อีเมล และชื่อผู้ใช้

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

การแจ้งเตือน

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร คำสั่งทำ และกระบวนการทำงานได้

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

1	ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อแสดงเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
2	คลิกที่การแจ้งเตือนใด ๆ เพื่อไปยังเคสหรือหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องในทันที

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก Medit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

การตั้งค่า

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าโปรแกรมได้

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

โปรดดูที่ [แอป Medit Link > การตั้งค่า](#) สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่า

สถานะเครือข่าย

Medit Link ช่วยให้ผู้ใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณแบบเรียลไทม์ ไอคอนสถานะเครือข่ายจะถูกแสดงในแถบข้อเรื่อง

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

Work Offline

Close

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี คุณอาจพบข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัด เช่น การเรียงลำดับเคส การสร้างเคส การแชร์ผ่าน Case Talk และการซิงโครไนซ์กับคลาวด์
- ประสิทธิภาพโดยรวมของบริการสามารถลดลงได้เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมเครือข่าย

ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่โหมดออฟไลน์เพื่อทำงานพื้นฐาน จากนั้นใช้คุณสมบัติที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อคุณเชื่อมต่อได้แล้ว

หมายเหตุ

สัญลักษณ์เครือข่ายระบุความเร็วการตอบสนองระหว่างพื้นที่ปัจจุบันและ AWS (Amazon Web Service) มันไม่ได้หมายถึงความเร็วเครือข่ายของคุณ ดังนั้นบางครั้งมันอาจแสดงสถานะว่าแย่มากหรือไม่ดี ถึงแม้ว่าความเร็วเครือข่ายของคุณจะเร็วพอก็ตาม

หากกระบวนการอื่นใช้เครือข่ายเดียวกัน ความเร็วอาจแสดงว่าแย่มากหรือไม่ดี และประสิทธิภาพโดยรวมของ Medit Link อาจไม่ดี ในกรณีนี้ โปรดอย่าแชร์เครือข่ายกับกระบวนการอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ "อัปโหลดข้อมูลดิบ" เป็นส่วนที่ใหญ่โตของกระบวนการเครือข่าย หากสัญลักษณ์แสดงสถานะว่าแย่มากหรือไม่ดี ให้ไปที่การตั้งค่า > อัปโหลดข้อมูลดิบ และปิด "อัปโหลดอัตโนมัติ"

การตั้งค่า

ทั่วไป

มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าระบบโดยรวม

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Apply

Close

โฟลเดอร์ที่บันทึก	ระบุโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์ข้อมูลที่ถูกสร้างใน Medit Link และโปรแกรมที่เชื่อมต่อ	
โฟลเดอร์การติดตั้งแอป	โปรดระบุเส้นทางการติดตั้งสำหรับ Medit Apps และ partner apps ที่มีอยู่ใน App Box	
การตั้งค่าภาษา	เลือกภาษาสำหรับโปรแกรม	
การติดป้ายกำกับฟัน	เลือกระบบการติดป้ายกำกับฟันระหว่าง FDI และ US	
การแจ้งเตือน	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตโปรแกรม	
อัปโหลดข้อมูลดิบ	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ข้อมูลดิบจะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ มันช่วยสำรองข้อมูลต้นฉบับและทำการสแกนได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้ Medit Link ด้วยบัญชีเดียวกันบนพีซีเครื่องอื่น การสำรองข้อมูลต้นฉบับบนคลาวด์จะใช้กับข้อมูลที่ได้มาใน Medit Scan for Clinics เท่านั้น	
การสแกนด่วน	เลือกว่าคุณต้องการให้ขั้นตอนการสแกนด้านล่างปรากฏใน Medit Scan for Clinics โดยอัตโนมัติหรือไม่ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม - ก่อนการรักษาสำหรับชากรรไกรบน - ก่อนการรักษาสำหรับชากรรไกรล่าง - การสแกนใบหน้า	
ตัวเลือกการดู	การเรนเดอร์ขั้นสูง	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ โมเดล 3D จะถูกแสดงในรูปแบบการเรนเดอร์ที่สดใสและสมจริงยิ่งขึ้น
	ปรับพื้นผิวสี	ปรับความสว่างของโมเดล 3D * สีที่ได้อาจแตกต่างจาก Medit Link เล็กน้อยเมื่อคุณเปิดข้อมูลเดียวกันด้วยซอฟต์แวร์อื่น
โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพผู้ใช้ Medit	เข้าร่วมในโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ Medit. - เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา - เราไม่รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคล	
หน้าเริ่มต้นหลังจากเข้าสู่ระบบ	เลือกเมนูเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเริ่มโปรแกรม - บัญชีคลินิกสามารถเลือกได้ระหว่าง Patient และ Case Box - บัญชีห้องแล็บสามารถเลือกระหว่าง In Box และ Work Box	

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

ตรวจสอบและจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องและบนคลาวด์

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Storage Management

Set Period

1/1/2018-11/13/2023

✓ All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Months Ago

1 Year Ago

Local PC Storage

696.19 GB/952.96 GB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

26.89 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

2.54 GB

Others

It shows space used by other programs.

666.76 GB

Total Selected 0.00 KB

Delete

Cloud Storage

36.53 GB/10.00 TB

Raw Data

Remove raw data created when using scan programs.

Raw data are not counted in cloud storage.

837.95 GB

Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

36.53 GB

Total Selected 0.00 KB

Delete

Close

59

กำหนดระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาด้านล่าง

- ทั้งหมด: ดูไฟล์ทั้งหมด
- 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสร้าง
- 1 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งเดือนหลังจากการสร้าง
- 6 เดือนที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหกเดือนหลังจากการสร้าง
- 1 ปีที่ผ่านมา: ดูไฟล์ที่ผ่านไประยะหนึ่งปีหลังจากการสร้าง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง

จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของพีซี

ข้อมูลดิบ	ลบข้อมูลดิบที่เลือกไว้ออกจากพีซี หากข้อมูลดิบถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานมันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ลบผลลัพธ์และไฟล์แนบออกจากพีซี เช่น mesh รูปภาพ และวิดีโอ หากไฟล์เหล่านี้ถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานพวกมันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
อื่น ๆ	ดูไฟล์ที่ถูกใช้ในการดำเนินงานระบบและโปรแกรมอื่น ๆ มันแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลของพีซีของคุณ คุณไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ออกจาก Medit Link ได้
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้ออกจากพีซี

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อมูลดิบ	ข้อมูลดิบไม่ใช่พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นมันจะไม่อยู่ในแผนภูมิวงกลม แต่คุณสามารถจัดการข้อมูลดิบได้จากที่นี่หากจำเป็น เช่น ลบมันออกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นต้น
ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบใช้พื้นที่ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หากคลาวด์เต็ม คุณสามารถรักษาความปลอดภัยพื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูล	หากคุณใช้แผน Standard อยู่ ให้สมัครสมาชิก Premium เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือกไว้ออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

ตั้งค่าโปรแกรมที่เชื่อมต่อ

จัดการโปรแกรมที่รองรับการผสมรวมใน Medit Link

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

คุณสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่อไปนี้ได้:

	บัญชีคลินิก	บัญชีห้องแล็บ
โปรแกรมการสแกน	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

หมายเหตุ

การผสมรวมบริการต่อไปนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Medit Link สำหรับ Mac

- Medit Scan for Labs

ตัวเลือกการส่งออก

ตั้งค่าวิธีการส่งออกไฟล์จาก Medit Link

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:/YHGam_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☐ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
 ☒ JPEG
 ☐ PNG
 ☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
 ☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
 ☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
 ☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
 ☐ Scanned Date
 ☐ Order Date

☒ Patient Name
 ☐ Case Name
 ☐ Partner Name

☐ Patient ID
 ☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
 ☐ Scanned Date
 ☐ Order Date

☒ Patient Name
 ☐ Case Name
 ☐ Partner Name

☐ Patient ID
 ☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

ประเภท CAD	เลือกโปรแกรม CAD ที่คุณต้องการใช้สำหรับการออกแบบ โปรแกรมจะปรับผลลัพธ์ตามการเลือกของคุณ ช่วยให้สามารถทำการออกแบบต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการจัดแนวแกนเพิ่มเติม
ส่งออกไฟล์ไปที่	ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บผลลัพธ์
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh ขั้นสุดท้าย
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดและรวมกัน	บีบอัดไฟล์: บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว ผสานรวม mesh แต่ละรายการ: รวมผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างไว้ในไฟล์เดียว เมื่อใช้บางโปรแกรมที่ไม่สามารถนำเข้าและทำงานกับหลายไฟล์ได้ คุณสามารถรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียวเพื่อทำงานในโปรแกรมเหล่านั้นได้
ตัวเลือกเมื่อมีโฟลเดอร์หรือไฟล์เดียวกันอยู่แล้ว	เลือกการดำเนินการเริ่มต้นสำหรับเคสที่มีโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์เดียวกันอยู่ในเส้นทางเป้าหมาย - ถามทุกครั้งเมื่อส่งออก - ส่งออกไฟล์ใหม่และเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันจะหายไป - สร้างโฟลเดอร์และส่งออกไฟล์
กฎสำหรับชื่อโฟลเดอร์	กำหนดกฎสำหรับการสร้างชื่อโฟลเดอร์เมื่อส่งออกไฟล์ กฎที่ตั้งไว้จะมีผลกับการตั้งชื่อโฟลเดอร์ และไฟล์ที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ - บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ - บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ
กฎสำหรับชื่อไฟล์	กำหนดกฎสำหรับชื่อไฟล์ที่ถูกส่งออก สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ - บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ - บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ

เครื่องมือแปลงเคส

คุณสามารถย้ายเคสระหว่างบัญชีต่าง ๆ ได้โดยการส่งออกเคสที่มีอยู่ของบัญชี หรือนำเข้าเคสที่ถูกส่งออกจากบัญชีอื่น

3. ในเซกชันการส่งออก ให้กำหนดระยะเวลาหรือค้นหาเคสสำหรับส่งออกหากจำเป็น

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스

☐ TEST111's Case

☐ Medit Ortho Simulation

4. เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออกจากรายการในเซกชัน "ไฟล์ที่จะส่งออก"

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. ตั้งชื่อไฟล์โดยแก้ไขชื่อเคสในฟิลด์ชื่อไฟล์
6. ตั้งโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อส่งออกเคสที่เลือกไว้
7. คลิก "ส่งออก"
8. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่จะส่งออกไฟล์ไปยัง

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. เคสที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .meditex

นำเข้าเคส

1. เปิด Medit Link แล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box


Case Talk

Total Patients: 3500


All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	


2. เลือกเซกชัน "เครื่องมือแปลงเคส" ในเมนูด้านซ้าย

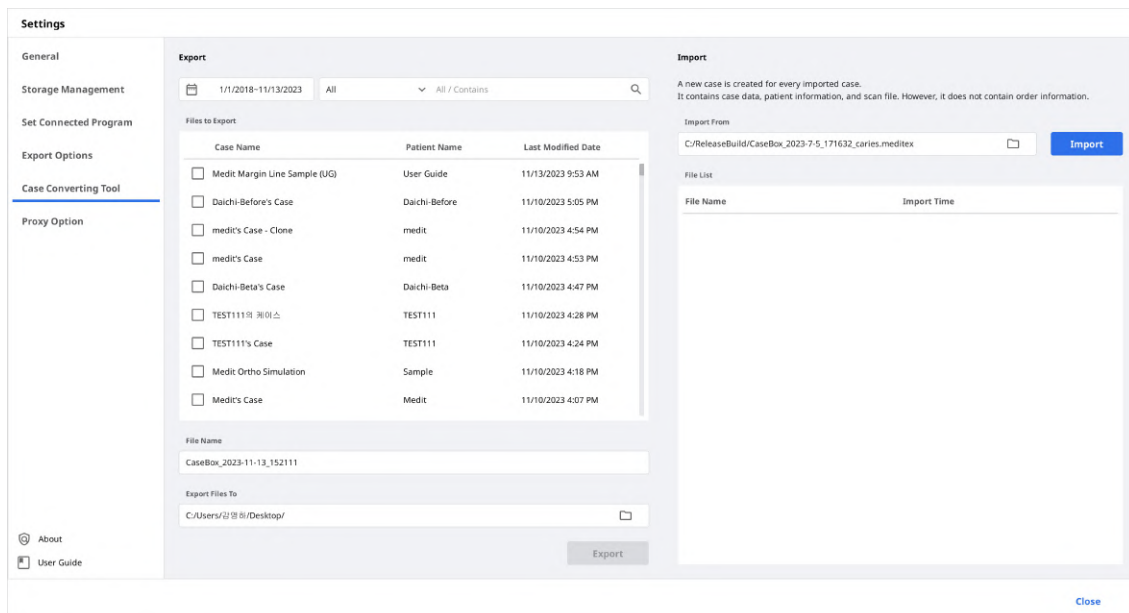

3. ในเซตชั้นนำเข้า ให้คลิกไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเรียกดูไฟล์ .meditex ที่คุณต้องการนำเข้าในพีซีของคุณ

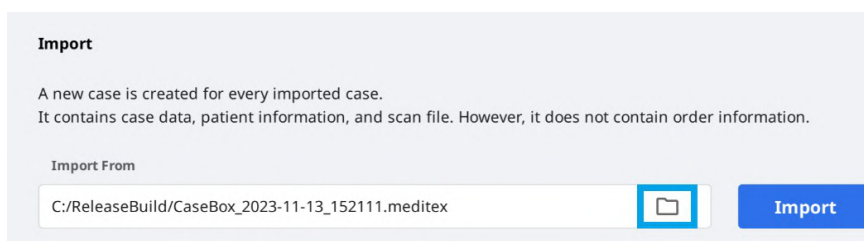

4. คลิกปุ่ม "นำเข้า" และทำเครื่องหมายไฟล์ที่จะนำเข้าในรายการด้านล่าง

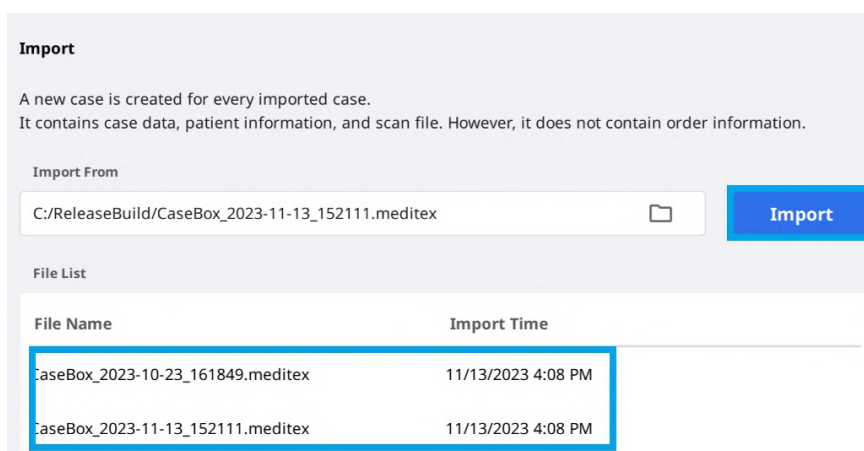

5. เคสที่ถูกนำเข้าจะปรากฏใน Case Box (บัญชีคลินิก) ของคุณหรือ Work Box (บัญชีแล็บ) ของคุณ

ตัวเลือกพร้อมซี

ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่จำกัด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายได้

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

เกี่ยวกับ

แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Medit Link

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

คู่มือผู้ใช้


รับคู่มือผู้ใช้สำหรับ Medit Link

การเปิดคู่มือผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมนู

Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

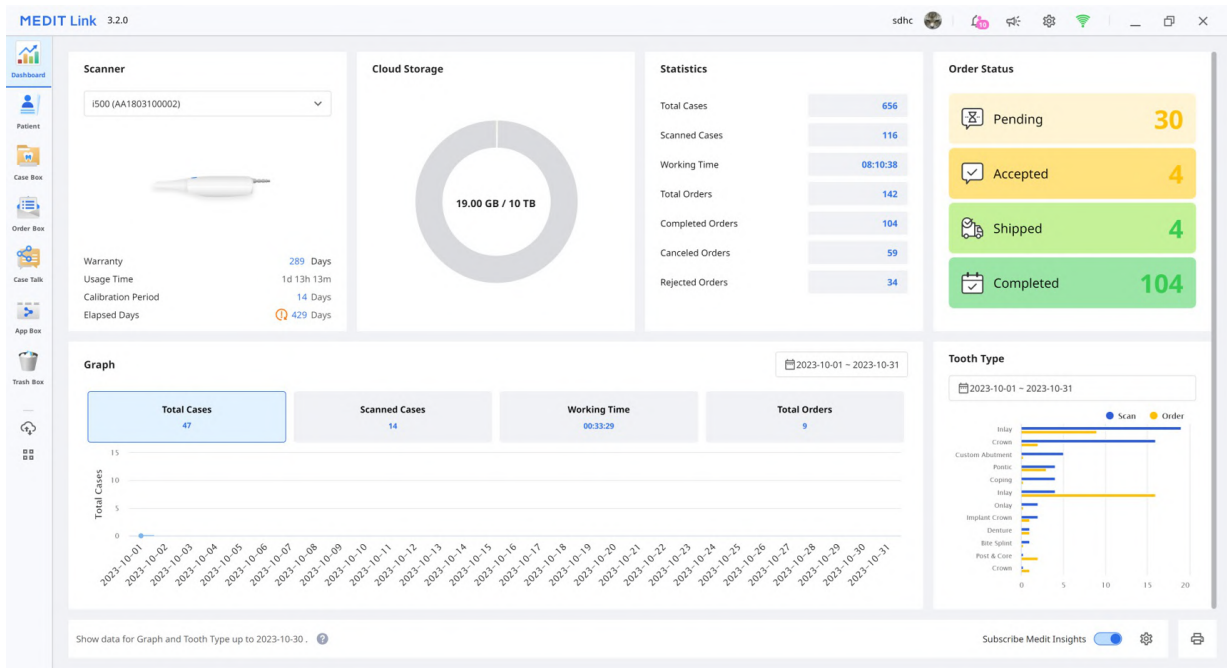

หมายเหตุ

โปรดดูที่ [Medit Link Web > Dashboard](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dashboard และ Medit Insights

Patient

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือผสานรวมผู้ป่วยได้ในเมนูผู้ป่วย

Patient

Total Patients: 106

Filter: All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
K k						
KELLY				1	2021-07-02	Scan
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
N n						
newpatient				1	2022-10-13	Scan
O o						
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan
R r						

เพิ่มผู้ป่วยใหม่

1. คลิก "ผู้ป่วยใหม่"

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบผู้ป่วยใหม่ จากนั้นคลิก "บันทึก"

ลบผู้ป่วย

หมายเหตุ

คุณสามารถลบผู้ป่วยได้เฉพาะเมื่อไม่มีเคสสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น

1. เลือกผู้ป่วยที่จะลบออกจากรายการ

MEDIT Link 3.2.0							
Patient							
Edit Delete Merge Patients		Selected Patients: 2		All / Contains			
Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	
☒ Temporaries				0	2023-10-04		
☒ T.O.P	키리노	M	1987-11-04	0	2023-09-07		

2. คลิก "ลบ"

ผสานรวมผู้ป่วย

คุณสามารถผสานรวมเคสทั้งหมดของผู้ป่วยหลายรายให้เป็นผู้ป่วยรายเดียวได้

1. เลือกผู้ป่วยที่คุณต้องการผสานรวมจากรายการ

MEDIT Link 3.2.0							
Patient							
Edit Delete Merge Patients		Selected Patients: 2		All / Contains			
Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	
☒ Temporaries				0	2023-10-04		
☒ T.O.P	키리노	M	1987-11-04	0	2023-09-07		

2. คลิก "ผสานรวมผู้ป่วย"
3. เลือกผู้ป่วยเป้าหมายที่คุณต้องการผสานรวมเคสทั้งหมดเข้าไป
4. เคสทั้งหมดจะถูกผสานรวมเข้ากับผู้ป่วยเป้าหมายและข้อมูลผู้ป่วยของผู้ป่วยเป้าหมายจะคงอยู่

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. คลิก "ใช่" เพื่อดำเนินการผสานรวมต่อไป

Case Box/Work Box

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	นำเสนอคุณสมบัติหลักที่มีอยู่: ปุ่มสแกนหรือเปิด, ปุ่มคำสั่งทำ, ไอคอนแอป
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: แบบฟอร์ม, โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์
5	แสดง UI ของการลงทะเบียนแบบฟอร์มสำหรับโปรแกรมการสแกนที่เลือก
6	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีให้ผู้ใช้เลือกสำหรับหมายเลขพื้นที่ที่เลือกไว้
7	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีที่ถูกใช้กับพื้นที่ที่เลือกไว้

แท็บใน Case Box/Work Box

แบบฟอร์ม	โปรแกรมดูไฟล์
แท็บแบบฟอร์มจะมี UI สำหรับการป้อนข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานสแกน เช่น ประเภท วิธีการ วัสดุสำหรับหมายเลขพื้น และตัวเลือกการสแกน ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกส่งไปยังโปรแกรมการสแกนที่เชื่อมต่อและถูกใช้เป็นข้อมูลคำสั่งทำเมื่อสั่งทำกับพันธมิตรของคุณ	ดูไฟล์ผลลัพธ์ที่สร้างโดยโปรแกรมสแกนและ CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3 มิติและรูปภาพ 2 มิติที่ได้มาหรือถูกแนบมา

ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box

มีฟังก์ชันต่อไปนี้อยู่ใน Case Box/Work Box

	สถานะเคส	แสดงสถานะเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ
	ประวัติเคส	ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติเคส History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	ลบ	ลบเคส คุณไม่สามารถลบเคสที่ถูกสั่งทำหรือเคสที่ถูกสร้างขึ้นแบบออฟไลน์ได้
	โคลน	สร้างสำเนาของเคสปัจจุบันใน Case Box ข้อมูลทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปยังเคสที่ถูกโคลน คุณสมบัตินี้ช่วยจำลองข้อมูลการรักษาสำหรับผู้ป่วยรายเดียวกัน หรือดำเนินการคำสั่งทำเสริมด้วยข้อมูลหรือไฟล์เดียวกัน
	แนบ	แนบไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ
	ส่งออก	ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์การสแกนหรือ CAD ไปยังในพื้นที่พีซี คุณสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการได้เมื่อส่งออกไฟล์ ไฟล์ที่ถูกส่งออกสามารถใช้ในซอฟต์แวร์ CAD และ CAM เพื่อการทำงานต่อไปได้
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสามารถแชร์ลิงก์กับใครก็ตามหรือกับบุคคลที่ระบุไว้ได้อย่างมีอิสระ สามารถตั้งค่ารหัส PIN หรือวันหมดอายุของลิงก์เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวได้
	ส่งคำขอการสนับสนุน	ไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ Medit เพื่อส่งคำขอการสนับสนุน

Order Box/In Box

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	ให้ฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งทำ (การยอมรับ/การยกเลิก; การส่งมอบ/การรับ)
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: คำสั่งทำ โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์: สถานะของเคส, ทางลัดสำหรับข้อมูลโดยละเอียด, ข้อมูลเคส, บันทึก และแท็ก เป็นต้น
5	แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ รวมถึงหมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อพันธมิตร วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ และบันทึกและแท็ก
6	แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำและสถานะการส่งมอบ

แท็บใน Order Box/In Box

คำสั่งทำ	โปรแกรมดูไฟล์
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทำ เช่น หมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อบัญชี วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ บันทึกและแท็ก	ดูไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการสแกน/CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลที่ระบุไว้ ใครก็ตามที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน Case Talk ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

หมายเหตุ

บริการ Case Talk ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

MEDIT Link 3.3.0

admin

Case Talk

2018-01-01 ~ 2024-04-23

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

1

สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

App Box

App Box มีโปรแกรมเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยเสริมขั้นตอนการสแกนขั้นพื้นฐานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปที่นำมาเพื่อสร้างอุปกรณ์ทันตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลการสแกน ช่วยเหลือคุณระหว่างการปรึกษา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

MEDIT Link 3.3.0

Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook!

Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Join Now >

Explore Medit Resources

News, tips, and expert insights on Digital Dentistry >

Visit Now >

All Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

Medit DCM Converter Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format Update	Medit Smile Design Simulation of teeth movement for orthodontic cases Installed	Medit Ortho Simulation Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... Install	Action Gate (ヨシダ・Yoshid...) Comprehensive dental PMS Install
---	--	--	---

Management

DentWeb(덴트웹) Integration Comprehensive dental PMS Install	EasyRx Integration Universal orthodontic LMS Install	Open Dental Integration Quality software for dental offices Install	iie systems connector PRM specialized for orthodontics Install	OneClick Integration App Osstem's easy-to-use PMS Install
i-Pro Integration Comprehensive dental PMS Install	LOGOSw Integration Add a link between LOGOSw and Medit Link Install	DentalCAD Integration Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. Install	Action Gate (ヨシダ・Yoshid...) Comprehensive dental PMS Install	Andcom Integration Convenient dental PMS Install

All


แท็บ "ทั้งหมด" จะแสดงรายการแอปที่มีให้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบรรดาแอปดั้งเดิมที่ Medit พัฒนาขึ้น (Medit Apps) และ partner apps ซึ่งเป็นแอปที่บูรณาการร่วมกับพันธมิตรของ Medit จากภาคส่วนต่าง ๆ ของทันตกรรมดิจิทัล เช่น การพิมพ์ 3D, ซอฟต์แวร์ CAD/CAM เป็นต้น

Medit Apps

แท็บ "Medit Apps" จะแสดงเฉพาะรายการแอปที่ตั้งเดิมที่ Medit พัฒนาขึ้น

ถูกดาวน์โหลด

แท็บ "ดาวน์โหลดแล้ว" จะแสดงรายการแอปที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณและแอปที่มีประวัติการดาวน์โหลดโดยบัญชีผู้ใช้

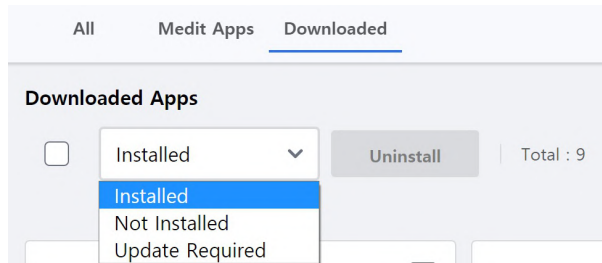

- **ติดตั้งแล้ว:** option นี้จะแสดงเฉพาะแอปที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ในปัจจุบัน
- **ไม่ได้ติดตั้ง:** option นี้จะช่วยให้คุณเห็นแอปที่คุณติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องอื่น เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งมันได้อย่างรวดเร็ว
- **จำเป็นต้องอัปเดต:** option นี้จะแสดงเฉพาะแอปที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องปัจจุบันและจำเป็นต้องอัปเดต

Trash Box

Trash Box จะจัดเก็บเคสที่ถูกลบไว้ชั่วคราว ทุกเคสใน Trash Box สามารถถูกกู้คืนหรือถูกลบออกอย่างถาวรได้

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อมูลที่ถูกลบออกจาก Trash Box จะถูกลบออกจากพีซีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณอย่างถาวร และไม่สามารถถูกกู้คืนได้

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

โปรแกรมจัดการการซิงโครไนซ์เคส

โปรแกรมจัดการการชิ่งโครในขเคสจะช่วยให้คุณอัปโหลดและดาวน์โหลดได้ใน Medit Link คุณสามารถอัปโหลดเคสหลายเคสไปยังคลาวด์หรือดาวน์โหลดไปยังในพื้นที่พีซีของคุณได้

[illegible]

อัปโหลด

เคสทั้งหมด / เคสที่เลือกไว้	ตรวจสอบจำนวนเคสทั้งหมด/เคสที่เลือกไว้ซึ่งจำเป็นต้องถูกอัปโหลด
อัปโหลดทั้งหมด	อัปโหลดเคสทั้งหมดไปยังคลาวด์
ยกเลิกทั้งหมด	ยกเลิกค่าของอัปโหลดทั้งหมด
	อัปโหลดเคสไปยังคลาวด์
	ยกเลิกการอัปโหลดเคส
	ลองอัปโหลดเคสอีกครั้ง

ดาวน้โหลด


เคสทั้งหมด / เคสที่เลือกไว้	ตรวจสอบจำนวนเคสทั้งหมด/เคสที่เลือกไว้ซึ่งจำเป็นต้องถูกดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด	ดาวน์โหลดเคสทั้งหมดไปยังคลาวด์
ยกเลิกทั้งหมด	ยกเลิกค่าขอดาวน์โหลดทั้งหมด
	ดาวน์โหลดเคสไปยังพีซี
	ยกเลิกการดาวน์โหลดเคส
	ลองดาวน์โหลดเคสอีกครั้ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถไปที่เมนูที่มีเฉพาะบนเว็บ Medit Link ได้โดยตรง เช่น My Info, Partners, และ Membership โปรดดูที่ Medit Link > เว็บ Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) และ [My Info](#) สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของเมนูเว็บ Medit Link

คุณสามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของ Medit นั่นก็คือ Medit Shop ที่ซึ่งคุณสามารถซื้อการขยายการรับประกันสำหรับเครื่องสแกนและผลิตภัณฑ์ Medit อื่น ๆ เช่น เป้สะพายหลังสำหรับเครื่องสแกน

นอกจากนี้คุณยังสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ Medit Link ได้ เข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาและข้อมูลของ Medit เช่น ศูนย์ช่วยเหลือ Medit, ช่อง YouTube ของ Medit Academy และแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ของ Medit Academy

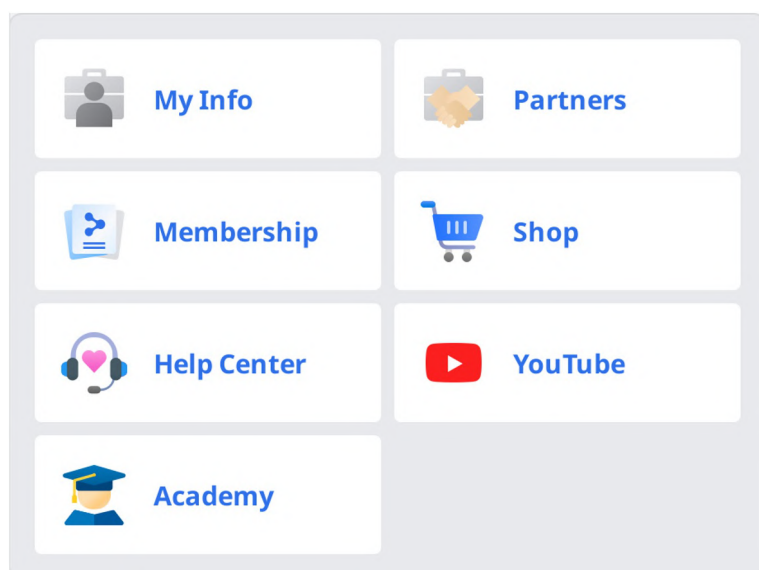

โปรแกรมดูไฟล์

โปรแกรมดูไฟล์จะจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับ Medit Link และข้อมูลที่ผู้ใช้แนบมา

มันมีฟังก์ชันการจัดการขั้นพื้นฐาน เช่น การแสดง/ซ่อนข้อมูล การปรับความทึบ และการลบข้อมูล

มันรองรับการแสดงตัวอย่างไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้:

- ข้อมูล 3D: STL, OBJ, PLY
- ภาพ 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- ไฟล์วิดีโอ: MKV, MP4, AVI, WMV

แผนผังข้อมูล

คุณสามารถจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับเคสในแผนผังข้อมูลได้ คุณยังสามารถแสดง/ซ่อนข้อมูล ปรับความโปร่งใส และลบข้อมูลจากแผนผังข้อมูลได้





	แสดง/ซ่อน	คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูลได้
	ความทึบ	แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งบนแผนผังข้อมูล คุณสามารถปรับความทึบของข้อมูลที่แสดงได้โดยเลื่อนแถบเลื่อน Base 
	เพิ่มเติม	การคลิกที่ไอคอน เพิ่มเติม จะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน Maxilla Base • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด แต่แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น • ซ่อน: ซ่อนข้อมูล • ทำซ้ำ: คัดลอกข้อมูลและเพิ่มมันลงในกลุ่มไฟล์แนบ • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่เลือก • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของข้อมูล • ลบ: ลบข้อมูล

หมายเหตุ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้เมื่อออนไลน์

เครื่องมือควบคุมโมเดล

การควบคุมโมเดล 3D

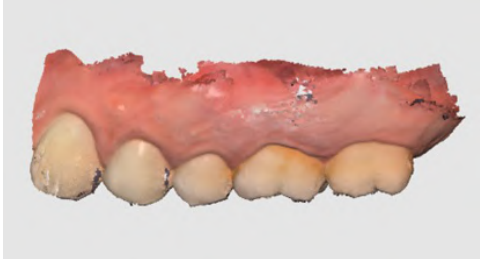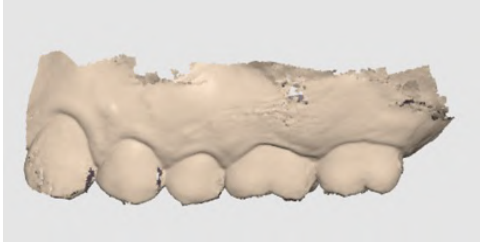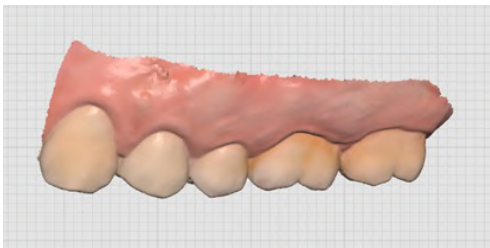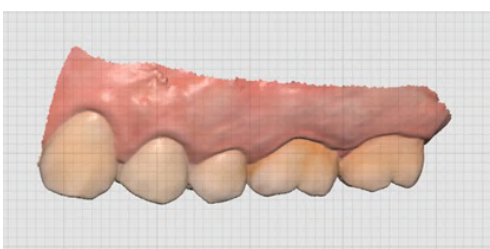	แพน	ย้ายโมเดล
	หมุน	หมุนโมเดล
	ซูมเข้า/ออก	ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
	ซูมปรับพอดี	จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
	โหมดแสดงโมเดล	เปิดพื้นผิว แสดงข้อมูลด้วยสีพื้นผิวจริง 
		ปิดพื้นผิว แสดงข้อมูลในสีเดียว 
	การตั้งค่าเส้นกริด (mm)	เปิดเส้นกริด แสดงเส้นกริดบนพื้นหลัง 
		เปิดการซ่อนทับ ซ่อนทับเส้นกริดเหนือโมเดล 
		ปิดเส้นกริด ซ่อนเส้นกริด

การควบคุมภาพ 2D


< >	ภาพถัดไป/ก่อนหน้า	ย้ายไปมาระหว่างภาพ
	แก้ไข	แก้ไขภาพ
 	หยาบ/วางหน้าต่าง	คุณสามารถแยกหน้าต่างภาพออกไปและปรับมันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้ เมื่อหน้าต่างถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งเดิม หน้าต่างจะกลับสู่ขนาดเริ่มต้น

เครื่องมือฟังก์ชัน

การจับภาพและบันทึก


จับภาพหน้าจอปัจจุบันเป็นภาพ 2D วาดบนหน้าจอ หรือเพิมบันทึก


คุณสามารถบันทึกมันเป็นไฟล์พร้อมกับบันทึกของคุณและส่งมันเป็นข้อมูลอ้างอิงได้

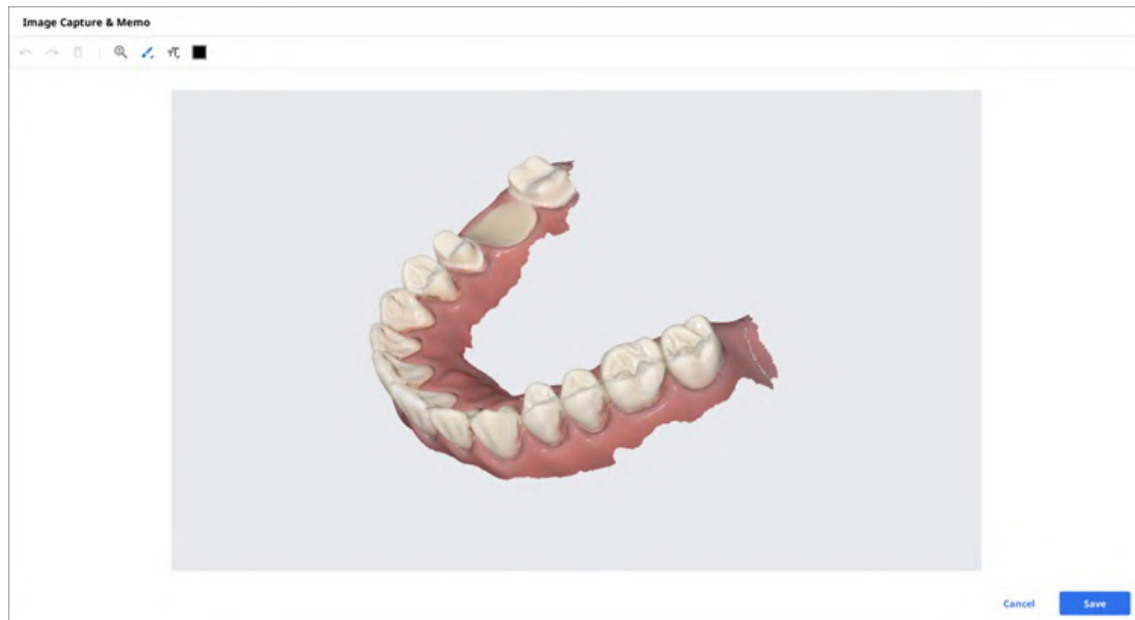

การจับภาพออร์โธ

จับภาพในทิศทางการดูปัจจุบันและด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาจากทิศทางการดูปัจจุบัน

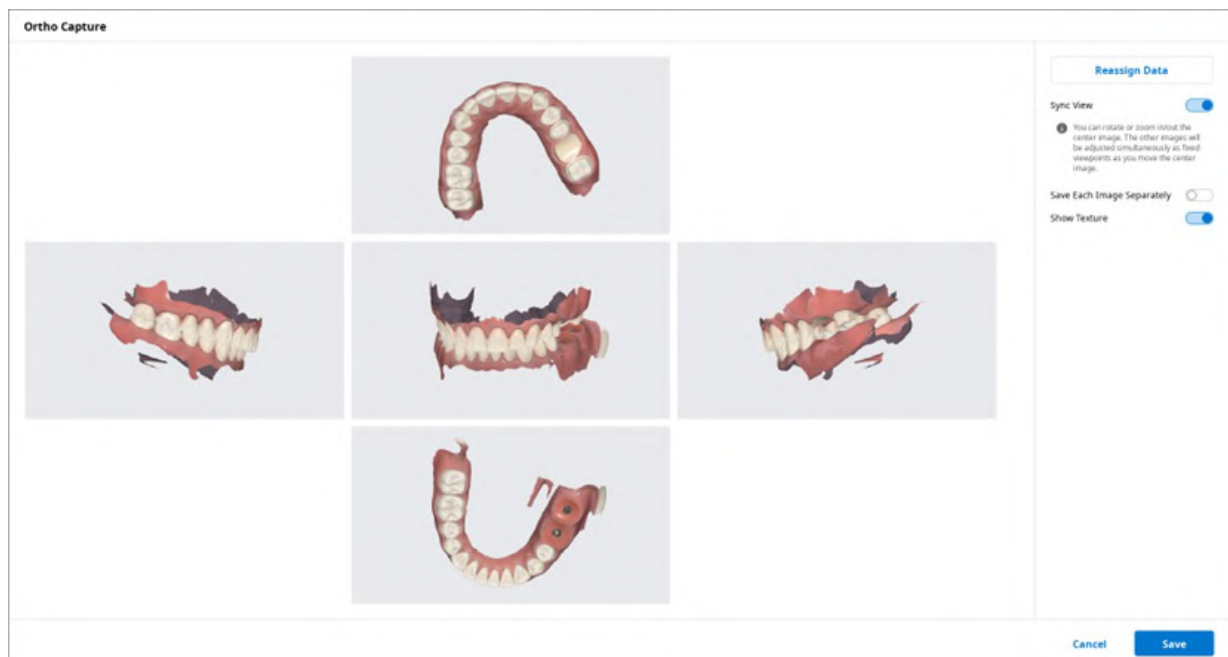

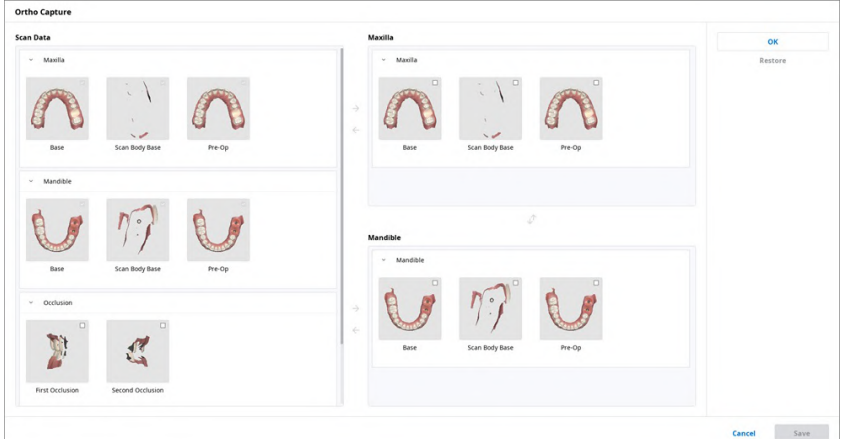มุมมองซิงค์	เมื่อเปิด คุณสามารถหมุนหรือซูมภาพตรงกลางเข้า/ออกได้ ภาพอื่น ๆ จะถูกปรับ พร้อมกันเป็นมุมมองคงที่เมื่อคุณเลื่อนภาพตรงกลาง เมื่อปิด คุณสามารถแพน หมุน หรือซูมเข้า/ออกภาพทั้งหมดที่ละภาพได้
บันทึกแต่ละภาพแยกกัน	บันทึกแต่ละภาพในความละเอียดสูง
แสดงพื้นผิว	เปิด/ปิดพื้นผิวสำหรับ โมเดล
กำหนดข้อมูลใหม่	เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับขากรรไกรบน/ขากรรไกรล่างด้วยคุณสมบัติกำหนดข้อมูล ใหม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนเพื่อสร้างและใช้ภาพผลลัพธ์ของการจับภาพ ภาพออร์โธได้  • ข้อมูลการสแกน: ข้อมูลการสแกนสำหรับเคสจะถูกแสดงทั้งหมด • ขากรรไกรบน: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรบนจะปรากฏขึ้น • ขากรรไกรล่าง: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรล่างจะปรากฏขึ้น


เติมเต็มช่องว่าง

เติมเต็มช่องว่างในข้อมูล 3D mesh



การตัดแต่ง


การตัดแต่งมีเครื่องมือมากมายสำหรับแก้ไขข้อมูล

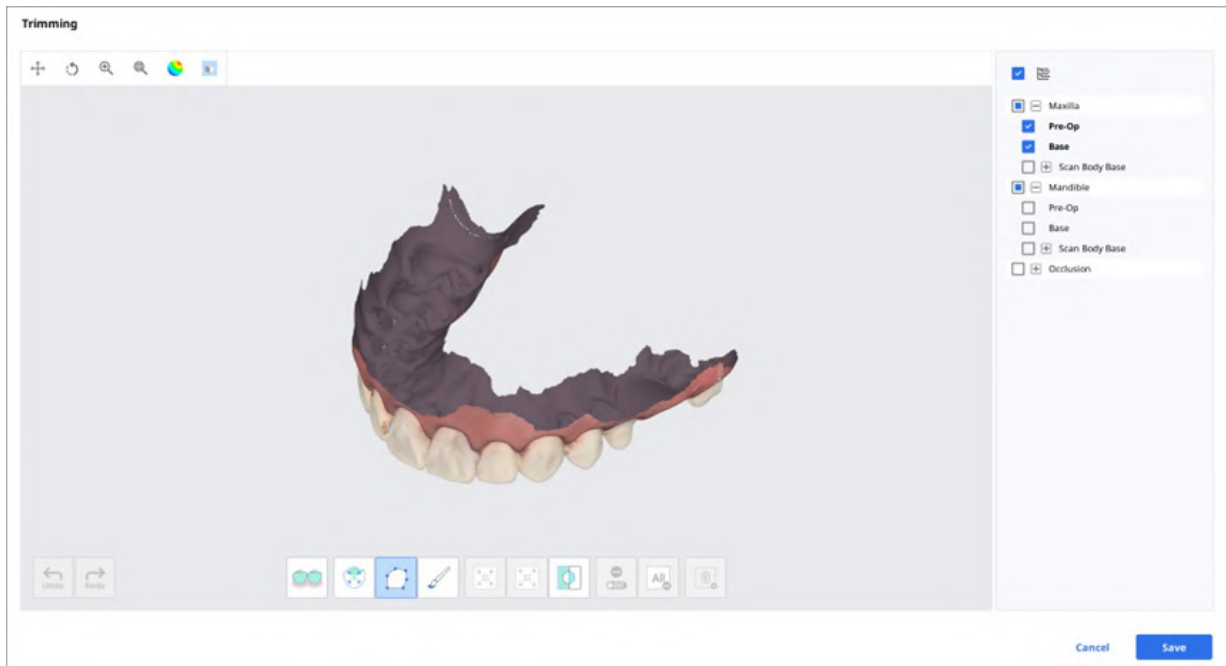

สามารถแก้ไขข้อมูล 3D mesh ที่เลือกไว้ได้โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง

การเลือก		การเลือกพื้น อัจฉริยะ	เลือกพื้นทั้งหมดของส่วนโค้งแนวฟันโดยอัตโนมัติ โดยทั้งส่วนของ เหงือกไว้ หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลการสแกนที่ได้รับโดยใช้ Medit Scan for Clinics ด้วยการเปิดตัวเลือก "ใช้ GPU"
		การเลือกพื้นซี่เดียว อัจฉริยะ	เลือกพื้นที่ของพื้นซี่เดียวโดยอัตโนมัติด้วยคลิกเดียว คุณสามารถคลิก หรือลากบนพื้นได้
		การเลือกโพลีโกล์	เลือกเอนทิตีทั้งหมดภายในรูปร่างโพลีโกล์ที่วาดไว้บนหน้าจอ
		การเลือกด้วยแปรง	เลือกเอนทิตีทั้งหมดบนเส้นที่วาดด้วยมือเปล่าบนหน้าจอ จะเลือก เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น มีแปรงสามขนาดแตกต่างกัน
การปรับพื้นที่ ที่เลือกไว้		ย่อพื้นที่ที่เลือกไว้	ลดพื้นที่ที่เลือกในทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
		ขยายพื้นที่ที่เลือก ไว้	ขยายพื้นที่ที่เลือกในทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
		กลับด้านพื้นที่ที่ เลือกไว้	กลับด้านการเลือก
การยกเลิกการ เลือก		การเลือก/การ ยกเลิกการเลือก	เมื่อเปิด จะยกเลิกการเลือกพื้นที่โดยเครื่องมือต่าง ๆ
		ล้างการเลือก ทั้งหมด	ล้างพื้นที่ที่เลือกไว้ทั้งหมด
		ลบพื้นที่ที่เลือกไว้	ลบข้อมูลจากพื้นที่ที่เลือกไว้


1. เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการตัดแต่งด้วยเครื่องมือเลือกพื้นที่

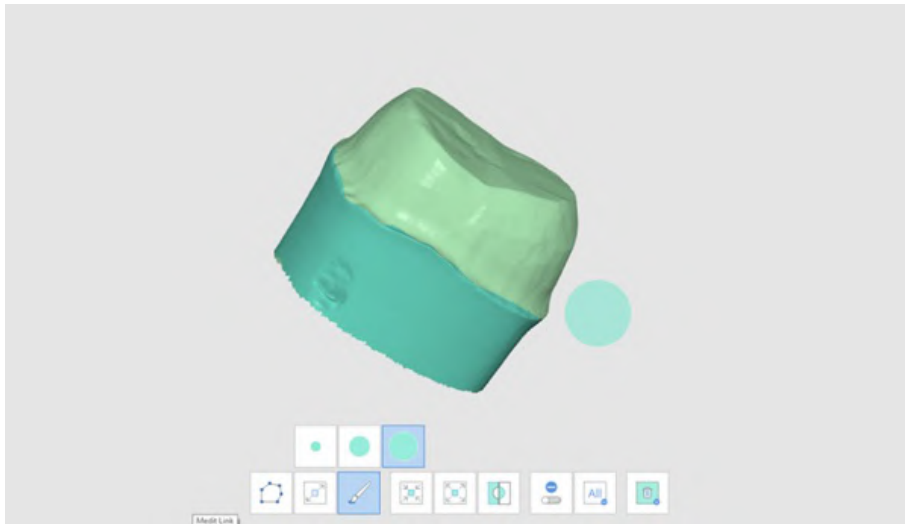


หมายเหตุ

เครื่องมือตัดแต่งแบบโพลีไลน์จะเลือกเอนทิตีทั้งหมดภายในรูปร่างโพลีไลน์ที่วาดไว้บนหน้าจอ ในขณะที่เครื่องมือตัดแต่งแบบแปรงจะเลือกเฉพาะข้อมูลด้านหน้าเท่านั้น


2. คุณสามารถกลับด้าน ย่อ หรือขยายส่วนที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือสามประเภทต่อไปนี้
 - กลับด้านพื้นที่ที่เลือกไว้

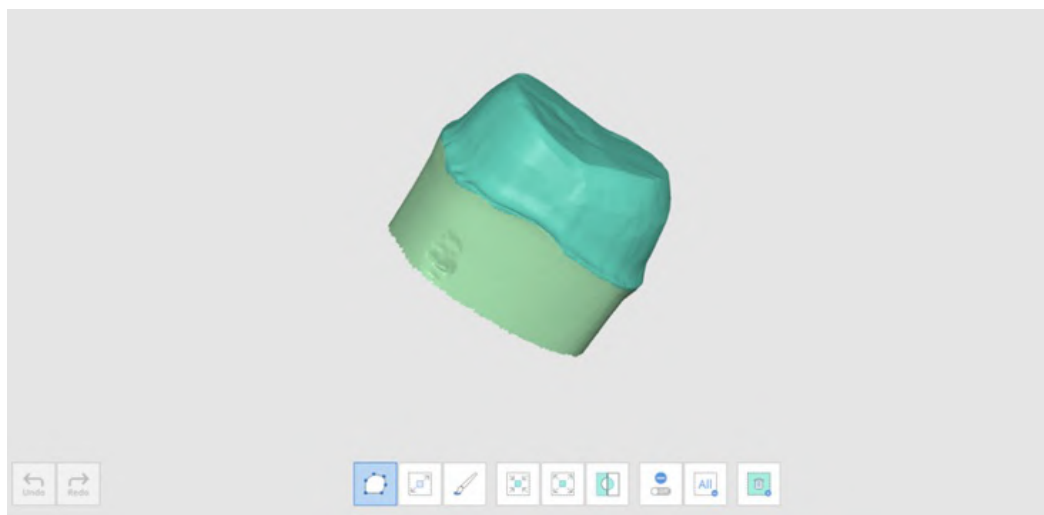

- ย่อพื้นที่ที่เลือกไว้

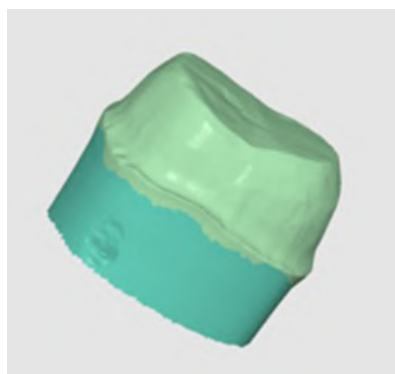


- ขยายพื้นที่ที่เลือกไว้

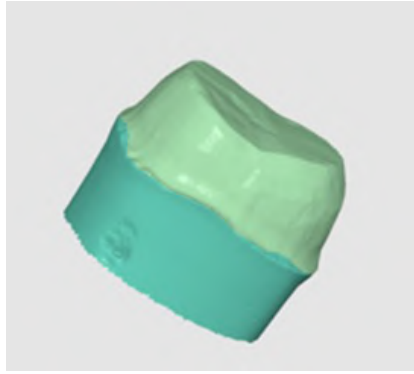






3. คุณสามารถยกเลิกการเลือกพื้นที่ที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือลบพื้นที่ที่เลือกไว้

ปรับการจัดแนวสฟันให้เหมาะสม

ปรับการจัดแนวสฟันให้เหมาะสม คุณสามารถเลือกข้อมูลเป้าหมายและปรับการจัดแนวสฟันได้

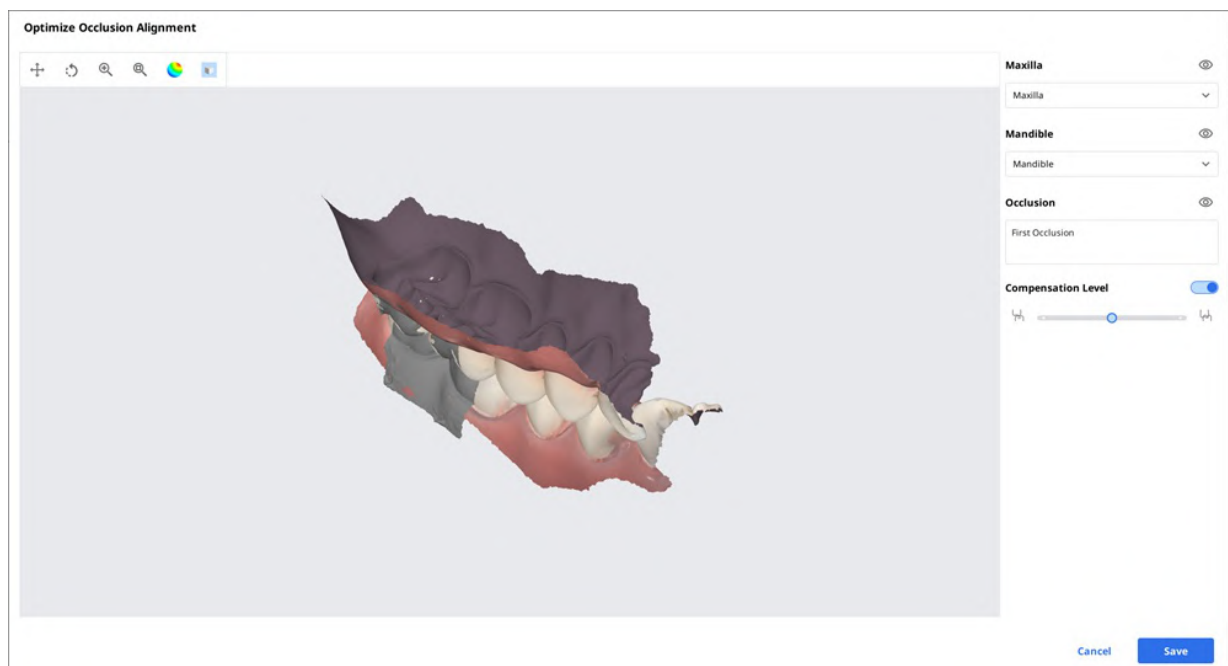


ระดับการชดเชย

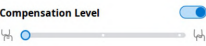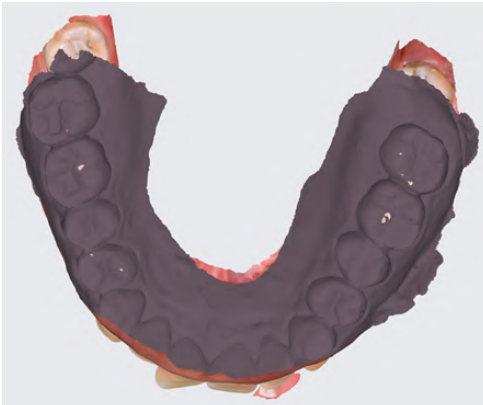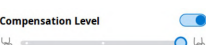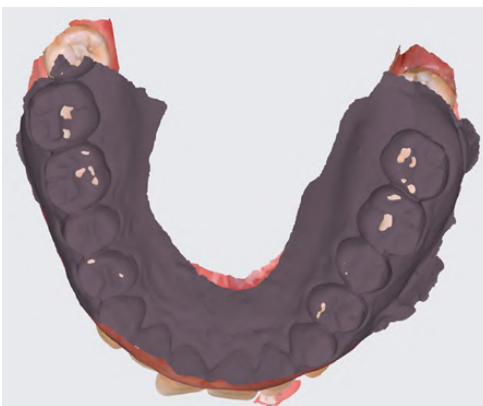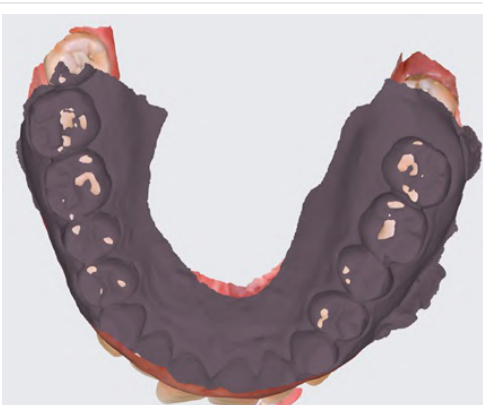ต่ำ	Compensation Level 	
กลาง	Compensation Level 	
สูง	Compensation Level 	
ปิด	Compensation Level 	

การเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่าง

คุณสามารถเล่นภาพการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างที่ถูกบันทึกไว้ใน Medit Scan for Clinics เพื่อดูการสัมผัสสบฟันแบบไดนามิกระหว่างฟันบนและฟันล่าง

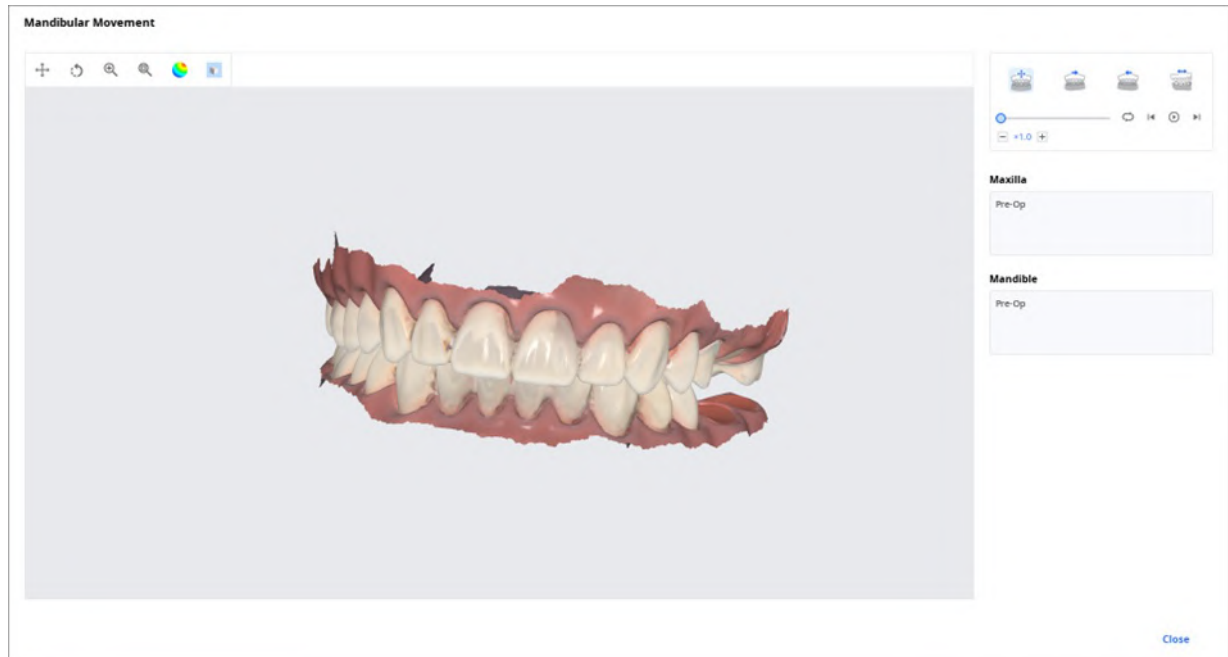

	การเคลื่อนไหวอิสระ	เล่นบันทึกการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างอย่างอิสระ
	การเคลื่อนไหวด้านข้างซ้าย	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางซ้าย
	การเคลื่อนไหวด้านข้างขวา	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางขวา
	การเคลื่อนไหวขากรรไกรไปด้านหน้า	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปด้านหน้า

จัดการข้อมูลสบฟันหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์

คุณสามารถรับผลลัพธ์ข้อมูลสบฟันหลายตำแหน่งได้จากแอปพลิเคชัน Medit Scan

Medit Link มีฟังก์ชันในการจัดการผลลัพธ์ผ่าน "โปรแกรมดูไฟล์"

วิธีการจัดการผลลัพธ์หลายรายการ


เมื่อผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์สบฟันหลายตำแหน่งจาก Medit Scan for Clinics Medit Link จะแสดงตัวเลือกในการเลือกผลลัพธ์

รายการผลลัพธ์จะถูกแสดงตามชื่อ และคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรายการ

โมเดลที่เลือกไว้จะถูกแสดงใน "แผนผังข้อมูล" และ "พื้นที่แสดงโมเดล"



คุณสามารถดูรายการและเปลี่ยนแปลงรายการได้โดยใช้ไอคอนลูกศร

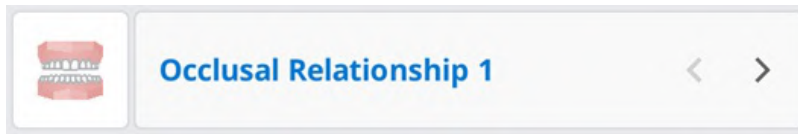

ตัวเลือกมุมมอง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมุมมองเพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box ได้

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

ตัวกรองสถานะ

แสดงหรือซ่อนตัวกรองแต่ละรายการที่แสดงสถานะของเคส ตัวกรองสถานะที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกแสดงบนหน้าจอใน Case Box/Work Box/In Box/Order Box

คุณสามารถค้นหาเคสที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยตัวกรองสถานะ

- คุณสามารถคลิกสถานะที่คุณต้องการดูเพื่อแสดงเฉพาะเคสในสถานะนั้นได้
- คุณสามารถเลือกได้หลายสถานะในแต่ละครั้ง

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการกรองต่อไปนี้:

Box	ตัวกรองสถานะ
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

รายการตาราง

เลือกรายการที่จะแสดงในรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการตารางหรือปรับความกว้างคอลัมน์ของตารางในมุมมองรายการเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้มากที่สุด

สำหรับแต่ละช่อง จะมีรายการตารางต่อไปนี้:

Box	รายการตาราง
Patient	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / เพศ / หมายเลขเคส / วันที่ลงทะเบียน / วันเกิด
Case Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันเกิด / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
Order Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด
In Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก
Work Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่สแกน / ชื่อคลินิก / วันที่สั่งทำ

ประเภทมุมมอง

เปลี่ยนประเภทมุมมองระหว่างมุมมองแกลเลอรีและมุมมองรายการบน Case Box

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกประเภทมุมมองต่อไปนี้:

Box	ตัวเลือกประเภทมุมมอง
Patient	มุมมองรายการ
Case Box	มุมมองรายการ / มุมมองแกลเลอรี
Order Box	มุมมองรายการ
In Box	มุมมองรายการ
Work Box	มุมมองรายการ

การจัดกลุ่ม

เลือกตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อจัดประเภทและจัดเรียงเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการจัดกลุ่มต่อไปนี้:

Box	ตัวเลือกการจัดกลุ่ม
Case Box	ไม่มี / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ
Order Box	ไม่มี / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
In Box	ไม่มี / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
Work Box	ไม่มี / วันส่งมอบที่ร้องขอ

หมายเหตุ

ตัวเลือกการจัดกลุ่มไม่สามารถใช้ได้ ใน Patient, Case Talk และ Trash Box

การเรียงลำดับ

เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับเพื่อเปลี่ยนลำดับเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่อง จะมีตัวเลือกการเรียงลำดับต่อไปนี้:

Box	การจัดกลุ่ม	ตัวเลือกการเรียงลำดับ
Patient	-	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / วันเกิด / วันที่ลงทะเบียน / หมายเลขเคส
Case Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	ชื่อผู้ป่วย	วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / ชื่อห้องแล็บ
Order Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ
In Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / ชื่อคลินิก
Work Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันส่งมอบที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก

หมายเหตุ

ตัวเลือกการเรียงลำดับไม่สามารถใช้ได้ ใน Patient, Case Talk และ Trash Box

การกรองและการค้นหา

กรองตามผู้ป่วย

กรองและแสดงเคสตามชื่อผู้ป่วย คุณสามารถสร้างรายการได้โดยการกรองเฉพาะผู้ป่วยที่คุณต้องการดำเนินการ

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a 'Dashboard' icon. The main area has a 'Case Box' section with a dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (with a checkmark), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. ป้อนชื่อผู้ป่วย

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' filter. The search bar contains the text 'won'. Below the search bar is a list of five patient entries, each with an unchecked checkbox and a text label: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'.

2. เลือกผู้ป่วยจากผลการค้นหาด้านล่าง

This screenshot shows the patient selection interface. At the top, a header bar displays 'wonhoonchoi / - / - / -' and a '+ 2' button. Below this is a search bar with 'won' and a list of five patient entries with checkboxes: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'won / - / - / -', 'wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234', and 'won / - / - / -'. Below the list is a section titled 'Selected Patients' with a 'Clear Selection' link. Three patients are listed with checked checkboxes: 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'WonHoonChoi / - / - / -'.

3. เฉพาะเคสของผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 ๐๙:๑๐			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 ๐๙:๑๐			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 ๐๙:๑๐			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 ๐๙:๑๐			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 ๐๙:๑๐	2023-02-09 ๐๙:๑๐		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 ๐๙:๑๐	2022-10-11 ๐๙:๑๐		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 ๐๙:๑๐			

กรองตามวันที่

กรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. เลือกระยะเวลาจากรายการ

- ทั้งหมด: แสดงเคสทั้งหมด
- ระยะเวลาที่กำหนดเอง: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาดังกล่าว
- วันนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดวันนี้
- เมื่อวาน: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อวาน
- 7 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 7 วันก่อนหน้า โดยไม่รวมวันนี้
- 30 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 30 วันก่อนหน้า โดยไม่รวมวันนี้
- เดือนนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนนี้
- เดือนก่อนหน้า: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

All Search / Contains

มีเกณฑ์การค้นหาต่อไปนี้อยู่ในแต่ละช่อง:

Patient	ทั้งหมด, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย
Case Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อห้องแล็บ
Order Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ID คำสั่งทำ
In Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Work Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Case Talk	ชื่อ Case Talk (ประกอบด้วย), ชื่อผู้ป่วย (เท่ากับ)
Trash Box (คลินิก)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ถูกลบโดย
Trash Box (ห้องแล็บ)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ถูกลบโดย

คุณสามารถเลือกเกณฑ์การค้นหา และเลือกได้ระหว่างตรรกะ ประกอบด้วย และ เท่ากับ

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส

การสร้างเคส

สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

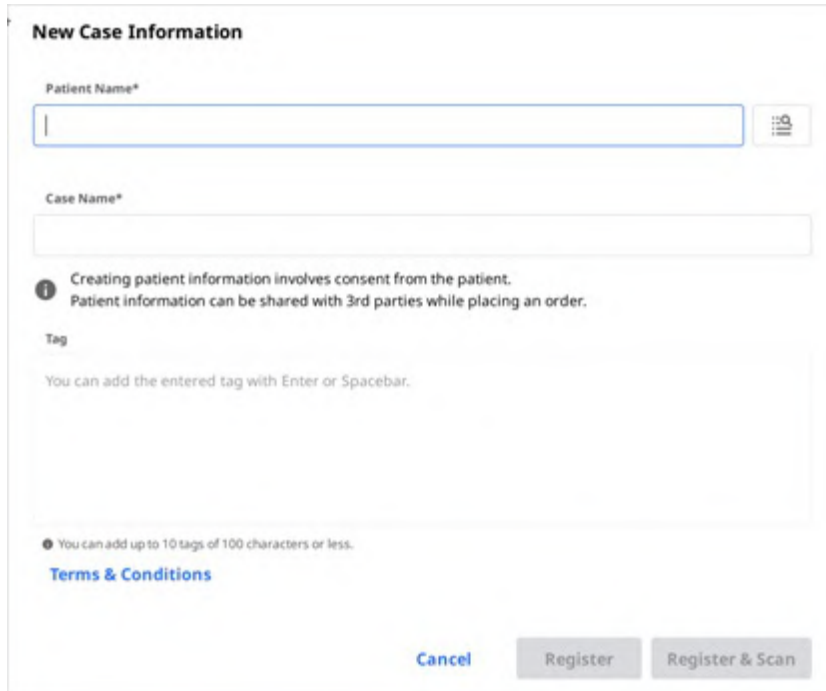

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A paragraph stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field with a placeholder "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less.", a link "Terms & Conditions", and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. ป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้ป่วยและชื่อเคส

- หากคุณป้อนชื่อที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย ผู้ป่วยใหม่จะถูกเพิ่ม
- หากคุณป้อนชื่อที่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถเลือกมันได้จากรายการ
- หากลงทะเบียนเคสสำหรับผู้ป่วยที่มีอยู่ ให้คลิกไอคอนรายชื่อผู้ป่วยเพื่อเลือกผู้ป่วยที่มีอยู่



- ในกล่องโต้ตอบรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอยู่ได้

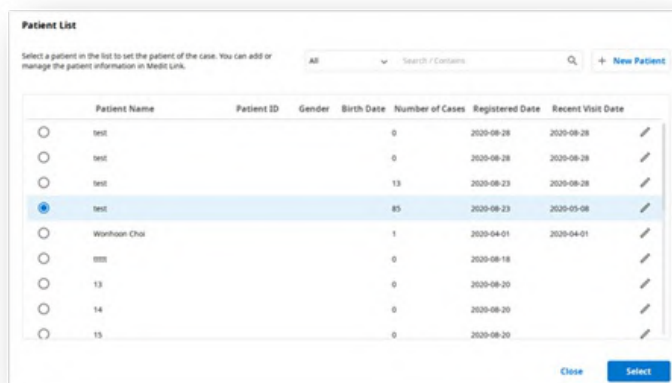

The "Patient List" dialog box shows a table of existing patients. At the top, there is a search bar and a "+ New Patient" button. The table has columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. Each row has a radio button for selection and an edit icon.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Buttons: Close, Select

3. ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้
4. คลิก "ลงทะเบียนและสแกน" เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเคสและดำเนินการสแกนต่อ
 - ลงทะเบียน: คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลัก สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อลงทะเบียนหลายเคส

- ลงทะเบียนและสแกน: ย้ายไปที่แท็บแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับเคส

สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. ป้อนหรือเลือกชื่อคลินิก
3. ป้อนชื่อคนไข้และชื่อเคส ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้
4. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันที่งานเสร็จสมบูรณ์
5. หลังจากลงทะเบียนเคส คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลัก

การแก้ไขเคส

แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

- คลิกไอคอน "ค้นหา" เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ป่วย โปรดทราบว่าไม่สามารถแก้ไขมันได้โดยตรง คุณสามารถค้นหาชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน และสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยจากรายการได้

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน
- หากต้องการสร้างผู้ป่วยใหม่ ให้กดปุ่ม "ผู้ป่วยใหม่"
- ใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับผู้ป่วย
- คลิก "ใช้" เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

- คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. คลิก "ใช่" หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเคสที่ได้รับผ่านการสั่งทำใน In Box ได้

การโคลนเคส

โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการโคลนข้อมูลประเภทใดไปยังเคสใหม่

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. เลือกว่าจะโคลนเฉพาะข้อมูลแบบฟอร์มเท่านั้นหรือข้อมูลทั้งหมด
4. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น

โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. ทำซ้ำข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างเคสใหม่
3. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น


การลบเคส

ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)

1. คลิกที่ไอคอน "ลบ"



2. คลิก "ตกลง" เพื่อลบเคส

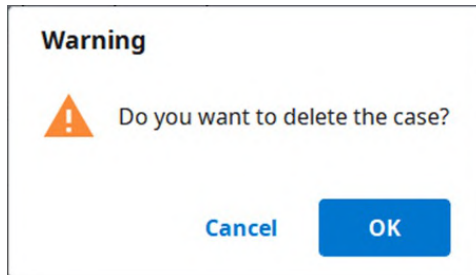

3. เคสที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยัง Trash Box และสามารถถูกกู้คืนได้หากจำเป็น

ข้อมูลแบบฟอร์ม

คุณสามารถป้อนข้อมูลแบบฟอร์มตามโปรแกรมที่เชื่อมต่อและประเภทการรักษาได้

ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการสแกนหรือโปรแกรม CAD และการสั่งทำ

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม

1. เลือกว่าคุณจะป้อนข้อมูลการรักษาตามฟันหรือส่วนโค้งแนวฟัน
2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการคำสั่งทำโดยอัตโนมัติ
3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม


1. เลือกโปรแกรมการสแกนที่คุณต้องการใช้
2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะกำหนดกลยุทธ์การสแกนของคุณ: ฟัน/เฟล็กซ์ซีเบลล์มัลติตาย/มัลติตาย
3. วิธีการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมการสแกนที่เลือก

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
ฟัน	O	O
ส่วนโค้งแนวฟัน	O	O
เฟล็กซ์ซีเบลล์มัลติตาย	X	O
มัลติตาย	X	O

4. เลือกหมายเลขฟัน ส่วนโค้งแนวฟัน หรือตายสำหรับขั้นตอนการสแกน
5. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการโดยอัตโนมัติ
6. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ

การเชื่อมต่อฟันเข้ากับสะพานฟัน

คุณสามารถเชื่อมต่อฟันหลายซี่เข้ากับสะพานฟันได้ เมื่อใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับฟันข้างเคียงหลายซี่ คลิกไอคอนสะพานฟันข้างฟันที่เลือกเพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ

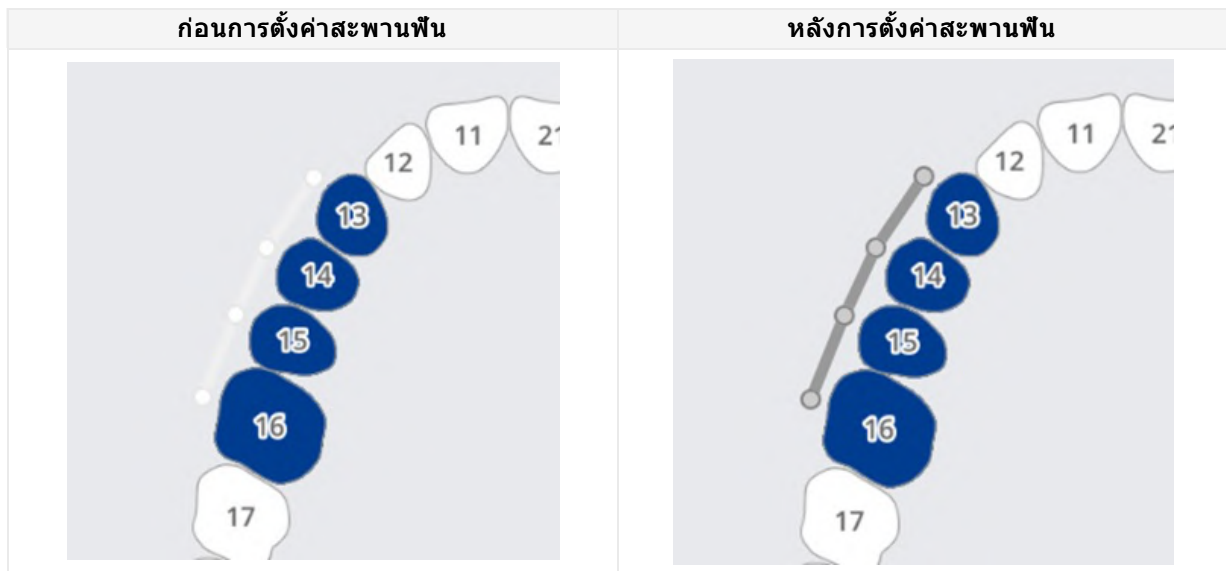

การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน

จะมีตัวเลือกการสแกนต่าง ๆ ให้เลือกโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้งาน

ตัวเลือกการสแกนที่เลือกไว้จะถูกส่งผ่านไปยังแต่ละโปรแกรมการสแกน

Medit Scan for Labs

ตัวเลือกทั่วไป

	ฟันข้างเคียง	ทำเครื่องหมายฟันที่ถูกรีดและฟันข้างเคียง แล้วส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	ฟันคู่สบ	ทำเครื่องหมายฟันคู่สบโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	แบบจำลองการสบฟัน	แสดงตัวเลือกสำหรับการเลือกแบบจำลองการสบฟันในโปรแกรมการสแกน
	ตัวทำเครื่องหมายการเคลื่อนที่	อนุญาตให้ใช้กลยุทธ์การสแกน "การเคลื่อนขากรรไกร" ในโปรแกรมการสแกน

ตัวเลือกตามฟัน

	สแกนบอดี้	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนสแกนบอดี้ในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนโมเดลก่อนการรักษา	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนโมเดลก่อนการรักษาในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนการแต่งซึ่ผึ้ง	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนการแต่งซึ่ผึ้งในโปรแกรมการสแกน

การเพิ่มไปยังรายการโปรด

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียนเป็นรายการโปรด

รายการโปรดที่ลงทะเบียนไว้จะถูกจัดการเป็นเทมเพลตและสามารถถูกแชร์ผ่านคุณสมบัติการส่งออกและนำเข้าได้

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. เลือกหมายเลขพื้น
2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - ประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสีสามารถถูกบันทึกเป็นรายการโปรดได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกทั้งหมดก็ตาม
3. คลิกที่ไอคอนรูป "ดาว"

☆
4. ชุดรวมของพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ โดยไม่รวมหมายเลขพื้น อยู่ในรายการค้นหาโปรดของคุณ

จัดการเทมเพลตโปรด

คุณสามารถลงทะเบียน จัดการ และแชร์เทมเพลตประเภทต่าง ๆ ได้

เพิ่ม	เพิ่มเทมเพลตใหม่
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อเทมเพลตปัจจุบัน
ลบ	ลบเทมเพลตปัจจุบัน
ส่งออก	ส่งออกเทมเพลตปัจจุบันเป็นไฟล์
นำเข้า	นำเข้าไฟล์เทมเพลต

ทำงานกับการสแกน/CAD

กระบวนการสแกน

ตามข้อมูลที่ป้อนไว้ คุณจะดำเนินการต่อการสแกน

1. ป้อน/บันทึกข้อมูลการรักษาและเลือกตัวเลือกการสแกนที่จำเป็น
2. คลิกปุ่ม "สแกน" ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

กระบวนการ CAD

Medit Link มีแอปบูรณาการ DentalCAD เพื่อเชื่อมต่อ Medit Link กับ DentalCAD

1. ติดตั้งแอป DentalCAD Integration ใน App Box
2. ไปที่ รายละเอียดเคส แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ที่ตัวเปิดด่วน
3. โปรดระบุเส้นทางไปยังแอป DentalCAD ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณในกล่องโต้ตอบแบบผุดขึ้น
4. โปรดป้อนรายละเอียดเคสของเคสที่ถูกสแกน แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ซึ่งจะมีกล่องโต้ตอบผุดขึ้นสำหรับสร้างไฟล์ dentalProject
5. ลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับ DentalCAD แล้วคลิก "เปิด" เพื่อเปิดโปรแกรม CAD
6. หากคุณติดตั้งแอป DentalDB Integration ผลลัพธ์ CAD จะถูกส่งไปยังเส้นทางการบันทึกที่ระบุไว้ใน exocad โดยอัตโนมัติ (บัญชีห้องแล็บเท่านั้น)


ใช้แอปเพิ่มเติม

เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน

คุณสามารถเรียกใช้แอปเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยการคลิกไอคอนแอปที่ติดตั้งไว้ในตัวเปิดด่วน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากไอคอนเหล่านั้น



การจัดการตัวเปิดแอป

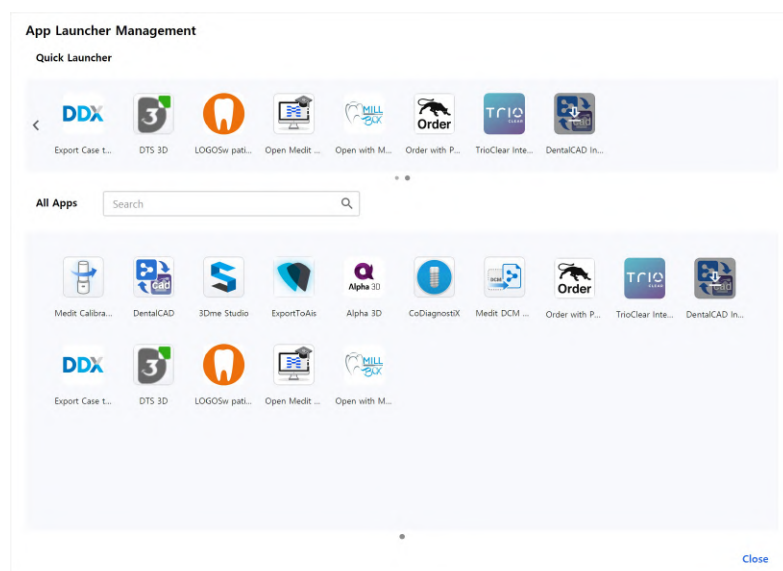

ตัวเปิดด่วน

คุณสามารถกำหนดได้ว่าแอปใดบ้างจะปรากฏในตัวเปิดด่วน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากหรือสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มแอปที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อจัดระเบียบ

แอปทั้งหมด

แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอนแอปเพื่อเพิ่มแอปลงในตัวเปิดด่วนได้ จากการคลิกขวาที่เมนูบริบท คุณยังสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอปได้

รับไฟล์ผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลการสแกน

นอกเหนือจากการแชร์ผลลัพธ์กับพันธมิตรผ่านคำสั่งทำแล้ว Medit Link ยังช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ของคุณในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งออก

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export


ส่งออกไฟล์ไปที่	ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์
ชื่อโฟลเดอร์	ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่และจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ทั้งหมดไว้ในนั้น ชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยกฎการตั้งชื่อ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อโฟลเดอร์
ชื่อไฟล์	ตั้งชื่อไฟล์สำหรับผลลัพธ์ กฎการตั้งชื่อจะตั้งชื่อไฟล์เริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อไฟล์
ประเภท	เลือกโปรแกรมการออกแบบที่คุณต้องการใช้ Medit Link จะปรับไฟล์ตามที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการออกแบบต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดแนวแกนเพิ่มเติม
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดไฟล์	บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว
ผลรวม mesh แต่ละรายการ	ผลรวมผลลัพธ์ของขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างเข้ากับฟันแต่ละซี่ มันมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถนำเข้าไฟล์หลายไฟล์ลงในโปรแกรมได้
ส่งออกความสัมพันธ์สับฟันทั้งหมด	เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สับฟันหลายรายการจากแอปสแกน คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์สับฟันทั้งหมดได้ในคราวเดียว
บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF	บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF พร้อมผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส

คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ของเคสหรือหลายเคสพร้อมกันด้วยตัวเลือก "ส่งออก" เหนือรายการเคสใน Case Box และ Work Box

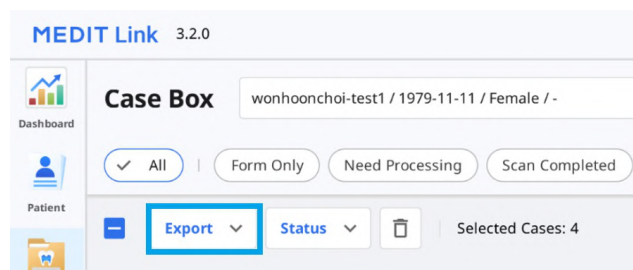

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. เลือกทุกเคสที่คุณต้องการส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการ

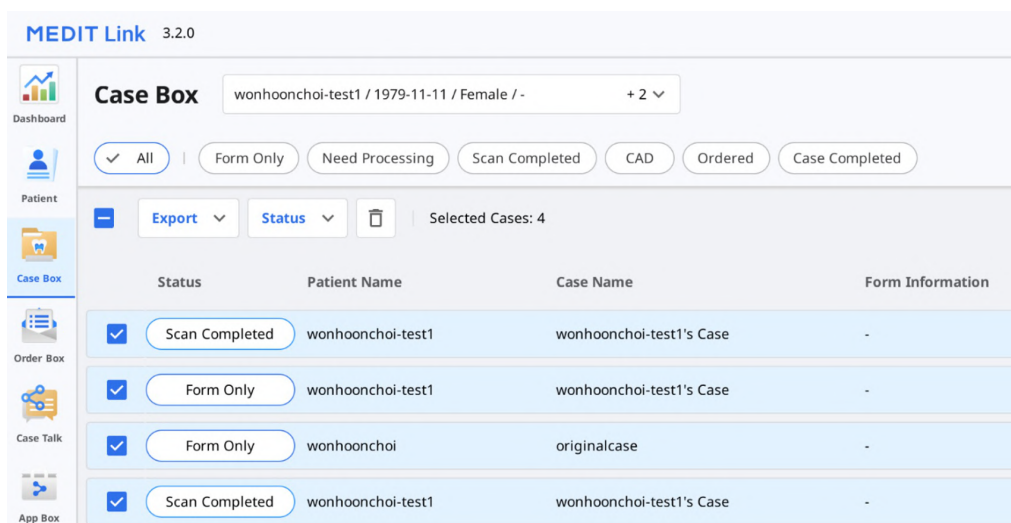

3. คลิก "ส่งออก" และเลือก "ไฟล์ผลลัพธ์"

Export

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. ตั้งค่าโพลเดอร์ปลายทาง ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

meditMesh

OBJ

PLY

STL

Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

JPG

JPEG

PNG

BMP

Compress Files

Combine Individual Mesh

Export All Occlusal Relationship

Save Case Information as PDF

Close

Export

หมายเหตุ

ฟิลด์ "ชื่อโพลเดอร์" และ "ชื่อไฟล์" ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อส่งออกไฟล์หลายเคส
ชื่อโพลเดอร์และชื่อไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเลือก "กฎสำหรับชื่อโพลเดอร์" และ "กฎสำหรับชื่อไฟล์" ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก

5. คลิก "ส่งออก"

6. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโพลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์

104


คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลการสแกนสำหรับเคสได้ด้วยไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์

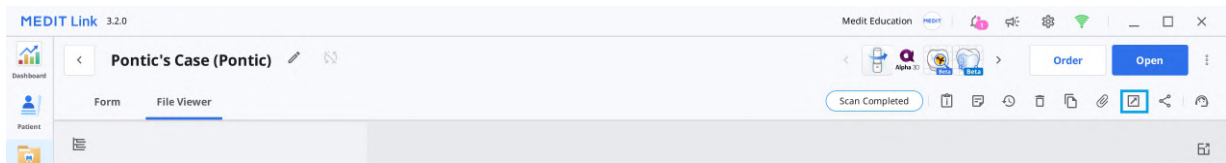

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์


4. ตั้งค่าโพลเดอร์ปลายทาง ชื่อโพลเดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

5. ในแท็บ "รายการไฟล์" คุณสามารถเลือกไฟล์ที่จำเป็นสำหรับเคสได้โดยยกเลิกการเลือกไฟล์ที่ไม่จำเป็น

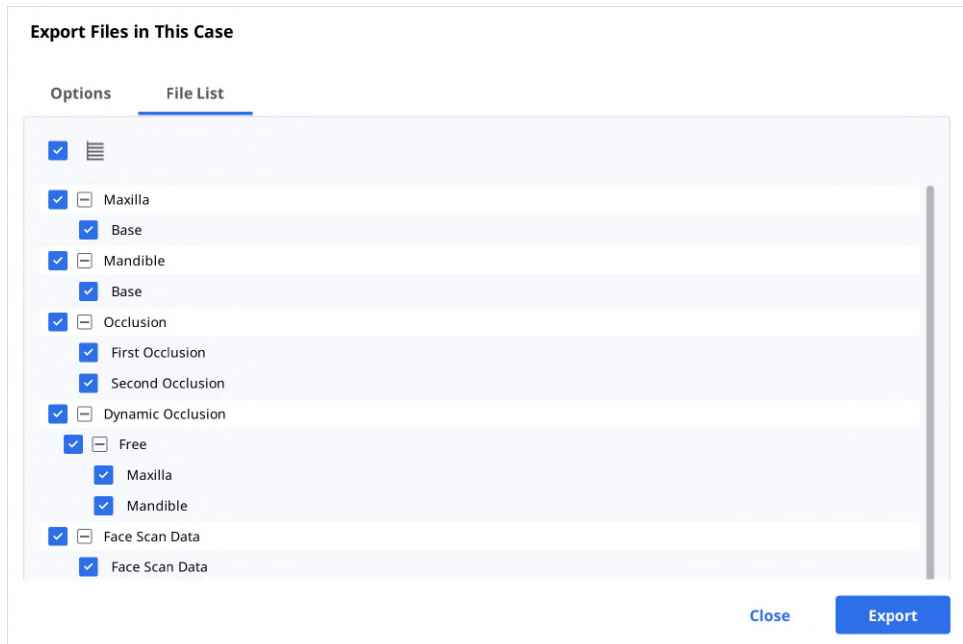


6. คลิก "ส่งออก"

7. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

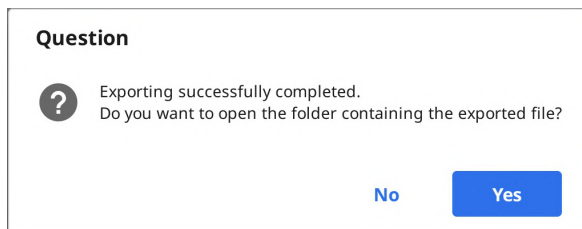


ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล

คุณสามารถส่งออกไฟล์ในกลุ่มข้อมูลเฉพาะได้จากเมนูแบบขยายในโปรแกรมดูไฟล์

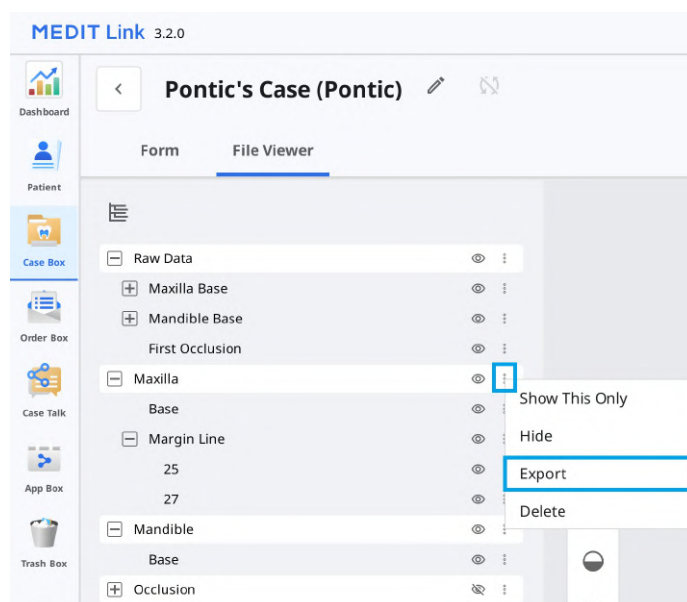

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอนสามจุดถัดจากกลุ่มข้อมูลหรือเอนทิตีในแผนผังข้อมูลในแท็บ โปรแกรมดูไฟล์

4. จากนั้นคลิก "ส่งออก"

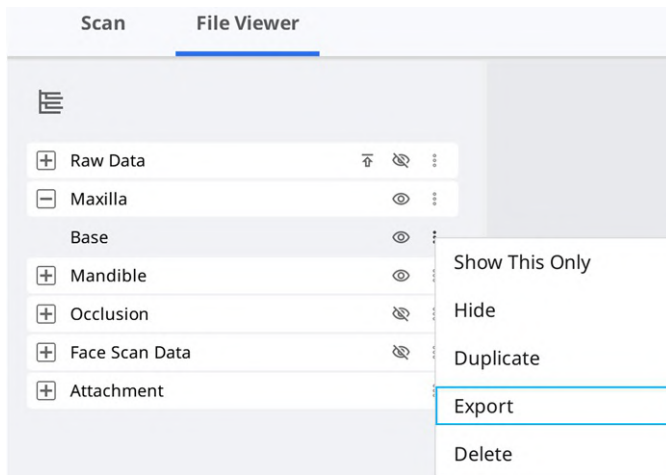

5. ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทาง ชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close **Export**

6. คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเลือกในแผนผังข้อมูล所选ไว้ในรายการไฟล์เท่านั้น

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. คลิก "ส่งออก"

8. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

ส่งออกรายการเคสเป็น CSV

Medit Link มีฟังก์ชันในการส่งออกรายการเคสในรูปแบบ CSV

คุณสามารถส่งออกรายการเคสพร้อมข้อมูลพื้นฐานและจัดการเคสได้อย่างง่ายดาย

- ไปที่ Case Box, Order Box, In Box หรือ Work Box.
- เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออก

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

☒ Export
 Status
 Selected Cases: 4
 2018-01-01-2023-10-24
 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
☒ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
☒ Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. คลิก "ส่งออก" และเลือก "รายการเคส (ตามที่แสดง)" หรือ "รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด)"

☒ Export
 Status

Result Files

☒ Case List (as shown)

☐ Case List (with all items)

หมายเหตุ

รายการเคส (ตามที่แสดง): ส่งออกรายการเคสด้วยรายการที่ถูกแสดงอยู่บนหน้าจอ ไปที่ตัวเลือกมุมมอง > รายการตาราง เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการตามที่คุณต้องการ
รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด): ส่งออกรายการเคสพร้อมรายการทั้งหมด รวมถึงสถานะ ชื่อเคส วันเกิด ข้อมูลแบบฟอร์ม วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ และชื่อห้องแล็บ

- กำหนดเส้นทางและชื่อไฟล์ จากนั้นบันทึกรายการ
- รายการเคสจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ CSV

ส่งออกเส้นขอบ

Medit Scan for Clinics มีฟังก์ชันสร้างเส้นขอบ และ Medit Link สามารถถ่ายโอนเส้นขอบไปยังโปรแกรม CAD ได้

ส่งออกเส้นขอบเป็นสี

โดยทั่วไปแล้ว Medit Link จะแปลงเส้นขอบเป็นสีและส่งออกผลลัพธ์พร้อมขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างไปด้วยกัน คุณสามารถสร้างเส้นขอบใน cad โดยอ้างอิงข้อมูลสีได้

ตัวอย่าง:



หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับรูปแบบที่มีข้อมูลสี เช่น meditMesh, OBJ และ PLY ไม่แปลงเส้นขอบเป็น STL

หมายเหตุ



ประเภท > 3Shape ไม่รองรับคุณสมบัตินี้

ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์

ในกรณีของ Exocad นั้น Medit Link จะส่งออกเส้นขอบไปที่ "~margin.xyz" ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ exocad ได้โดยตรง

คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ใน exocad ได้โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

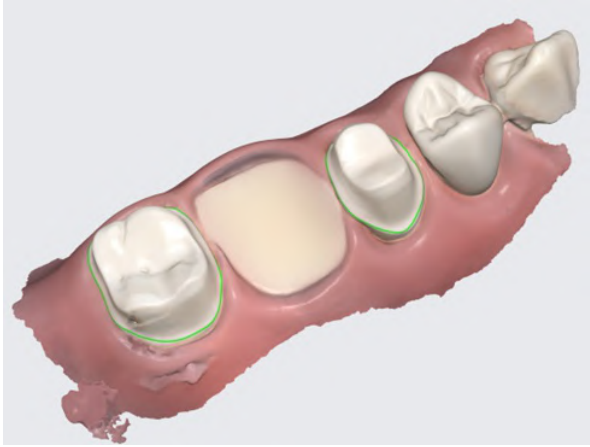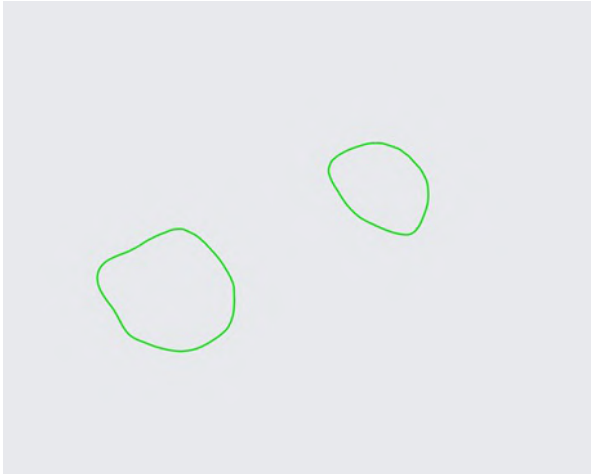ขากรรไกรบน	เส้นขอบ
	
ผลลัพธ์โดยมีเส้นขอบเป็นข้อมูล	เส้นขอบที่ถูกส่ง ออกเป็นแต่ละไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link

Medit Link มีฟังก์ชันดาวน์โหลด

หากต้องการรับไฟล์ผลลัพธ์โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Medit Link คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากบริการเว็บ Medit Link

หมายเหตุ


ข้อมูลต้องถูกอัปโหลดบน Medit Cloud เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

มีฟังก์ชันดาวน์โหลดอยู่ในเมนูต่อไปนี้ของบริการเว็บ Medit Link

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

คุณจะพบปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวบน

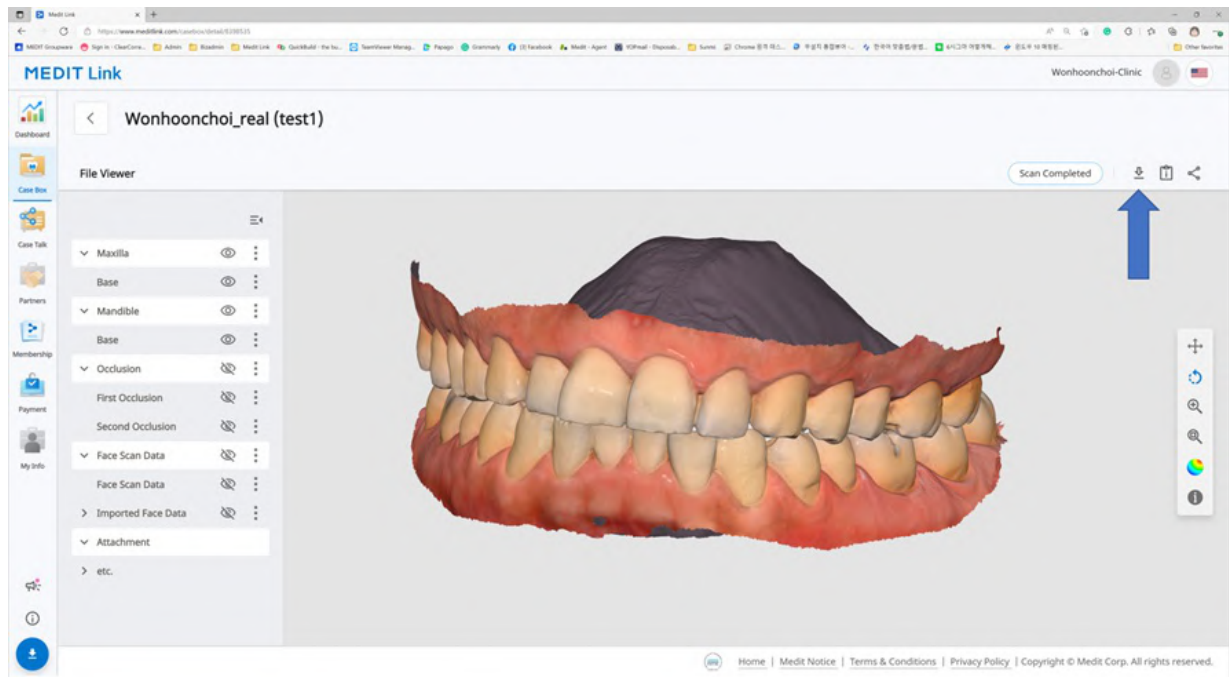


Web Viewer

เมื่อคุณแชร์เคสโดยใช้ Case Talk คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะอนุญาตการดาวน์โหลดหรือไม่

หากคุณทำเครื่องหมายที่ "ให้อนุญาตการดาวน์โหลด" และแชร์เคส ผู้ใช้ทุกคนที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

The screenshot shows the 'Share through Case Talk' dialog box. It has a title bar with a question mark icon. The main content area includes a 'Share with Anyone' dropdown, an 'Expiration Date' field set to '2022-04-27', and a 'PIN Code' section with a checkbox and an 'Enter PIN Code' input field. There are three checked options: 'Share the patient's name', 'Grant Download Permission Premium Feature' (highlighted with a blue box), and 'Allow comments'. Below these is a 'Comment' text area. At the bottom, there is a disclaimer and two buttons: 'Close' and 'Get Link'.


ใน Web Viewer คุณจะพบไอคอน "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาบน

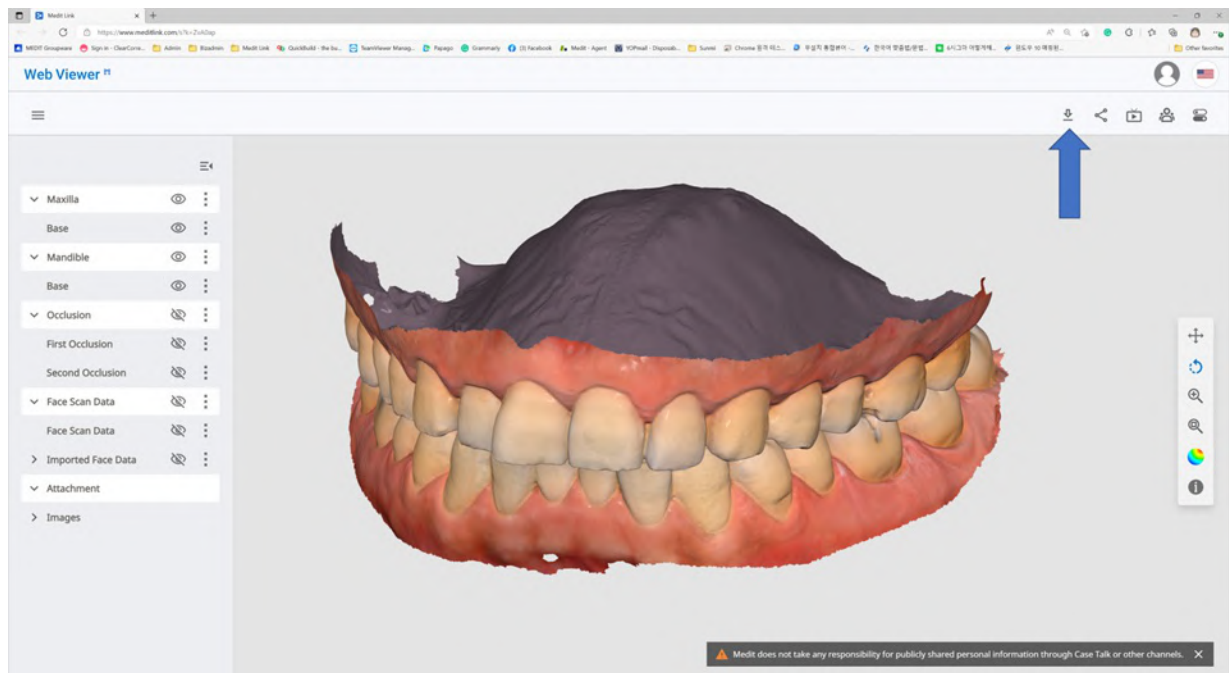

1. คลิก "ดาวน์โหลด"



2. เลือกรูปแบบ mesh จากกล่องโต้ตอบดาวน์โหลด

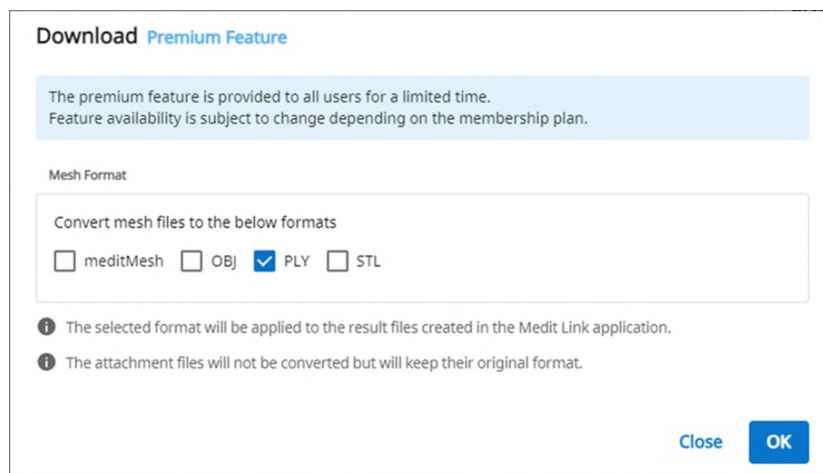

3. จากนั้นคลิก "ตกลง"

สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ

คุณสามารถสั่งทำเคสด้วยข้อมูลที่ได้นำจากโปรแกรมที่เชื่อมต่อและถูกแนบโดยผู้ใช้อย่างง่ายดาย

การสั่งทำเคส

คุณสามารถส่งคำสั่งทำสำหรับพันธมิตรของคุณได้ใน Case Box

1. คลิกปุ่ม "สั่งทำ"
2. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งทำของคุณ

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. เลือกพันธมิตร
4. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็บรายการคำสั่งทำ
 - คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเปิดเผยชื่อผู้ป่วยหรือไม่
5. ตรวจสอบไฟล์ที่จะสั่งทำจากแท็บรายการไฟล์
6. ป้อนวันส่งมอบที่คุณต้องการ
 - ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 7 วันหลังจากวันที่สั่งทำ
7. คุณสามารถเพิ่มบันทึกและแท็กไปยังพันธมิตรของคุณเพื่อร่างรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงได้
8. เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สลับฟันหลายรายการจากแอปสแกน คุณสามารถส่งผลลัพธ์สลับฟันทั้งหมดได้ในคราวเดียวโดยทำเครื่องหมายที่ "สั่งทำความสัมพันธ์ของสลับฟันทั้งหมด"
9. ดำเนินการต่อกับคำสั่งทำของคุณ

ยืนยันคำสั่งทำ (In Box)

- ยอมรับคำสั่งทำเมื่อได้รับมัน

- คำสั่งทำที่ได้รับการยอมรับจะถูกส่งต่อไปยัง Work Box

ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)

- คุณสามารถยกเลิกคำสั่งทำได้ก่อนที่พันธมิตรของคุณจะยอมรับ
- เคสที่ถูกยกเลิกสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

ปฏิเสธคำสั่งทำ (In Box)

- คุณสามารถปฏิเสธคำสั่งทำได้ที่ได้รับได้
- เคสที่ถูกปฏิเสธสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเคสที่คุณสั่งทำได้จาก Order Box ในบัญชีคลินิก คุณสามารถตรวจสอบเคสที่คุณได้รับจาก In Box ได้ในบัญชีห้องแล็บ

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

ข้อมูลคำสั่งทำ	ข้อมูลที่สามารถถูกรวมอยู่ในคำสั่งทำได้มีดังนี้: ID คำสั่งทำ/ชื่อผู้ป่วย/ชื่อบัญชี/วันที่สแกน/วันที่สั่งทำ/วันส่งมอบ/วันที่ครบกำหนดส่งมอบ/บันทึก คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำและ ข้อมูลการจัดส่งได้
รายการคำสั่งทำ	รายการคำสั่งทำจะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำ
การจัดส่ง	ป้อน/ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง

การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)

ป้อนข้อมูลการจัดส่งของเคสที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มต้นจัดส่ง

1. คลิกแท็บการจัดส่ง
2. ป้อนข้อมูลการจัดส่งแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. ข้อมูลที่ป้อนจะถูกส่งไปยังพันธมิตรของคุณ

การจัดการวันส่งมอบ

คุณสามารถกำหนดวันส่งมอบที่คาดหวังได้เมื่อทำการสั่งทำ และข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ

การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)

- เมื่อสั่งทำจาก Case Box คุณสามารถระบุวันส่งมอบที่ร้องขอได้

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
 Seoul, KR
 [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 01026088546

Case Name

Patient Name

mandibular movement - Clone - Clone

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

Delivery Time

2023-04-13

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

- ค่าเริ่มต้นคือ 7 วันหลังจากวันที่สั่งทำ
- ป้อนวันที่/เวลาที่คุณต้องการรับสินค้าและดำเนินการต่อกับคำสั่งทำ
- คุณสามารถตั้งเวลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบเลื่อน

การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)

- คุณสามารถป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังสำหรับเคสที่สั่งทำจาก In Box ได้

1. ตรวจสอบวันส่งมอบที่ร้องขอกับพันธมิตรและกำหนดเวลาใหม่โดยใช้ปุ่ม "แก้ไข"



2. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันทำงานปัจจุบัน หากจำเป็น คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน
3. คลิก "ใช้"

4. วันส่งมอบที่คาดหวังและบันทึกจะถูกส่งต่อพร้อมกับคำสั่งทำ
 - คุณสามารถตรวจสอบวันที่และบันทึกได้ใน Order Box
 - คุณสามารถเปลี่ยนวันส่งมอบที่คาดหวังได้ และการเปลี่ยนแปลงจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ
5. คุณสามารถตรวจสอบประวัติเคสได้โดยใช้ปุ่ม "ประวัติ"



การเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)


เมื่องานทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้นเคสจากรายละเอียดเคส

คุณจะได้พบไอคอนสามจุดทางด้านขวาจากปุ่ม "เปิด" หรือ "สแกนซ้ำ"




เสร็จสิ้นงานโดยคลิกที่ไอคอนและเลือก "Done"

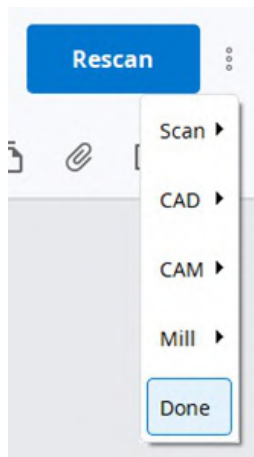

เสร็จสิ้นหลายเคสจากรายการเคส

1. ไปที่ Work Box
2. เลือกเคสทั้งหมดที่จะเสร็จสิ้น

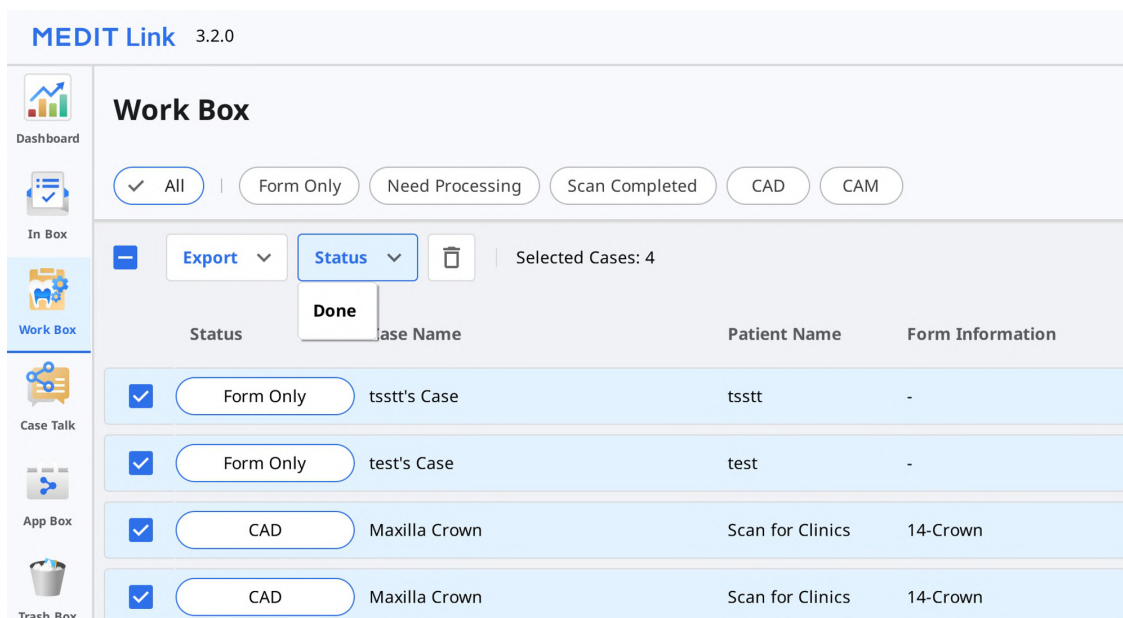


3. คลิก "สถานะ" และเลือก "Done"

เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)

หลังจากเสร็จสิ้นเคสในห้องแล็บ คลินิกจำเป็นต้องยืนยันเคสเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งทำทั้งหมด

คลินิกจะพบปุ่ม "ยืนยันการส่งมอบ" ใน Order Box หากห้องแล็บดำเนินการเสร็จสิ้น


คลิกที่นี่ กระบวนการสั่งทำทั้งหมดจะเสร็จสิ้น และสถานะเคสจะเปลี่ยนเป็น "Case Completed"

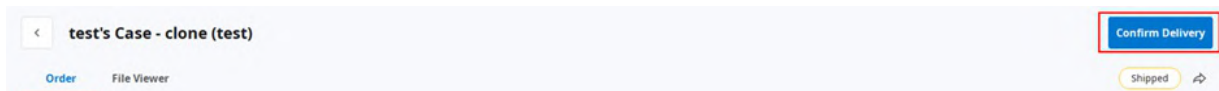

เสร็จสิ้นเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำใน Case Box

สำหรับเคสที่ไม่ได้ถูกสั่งทำไปยังห้องแล็บ คุณสามารถเสร็จสิ้นเคสเหล่านี้ได้จาก Case Box

1. ไปยัง Case Box
2. เลือกเคสที่คุณต้องการเสร็จสิ้น

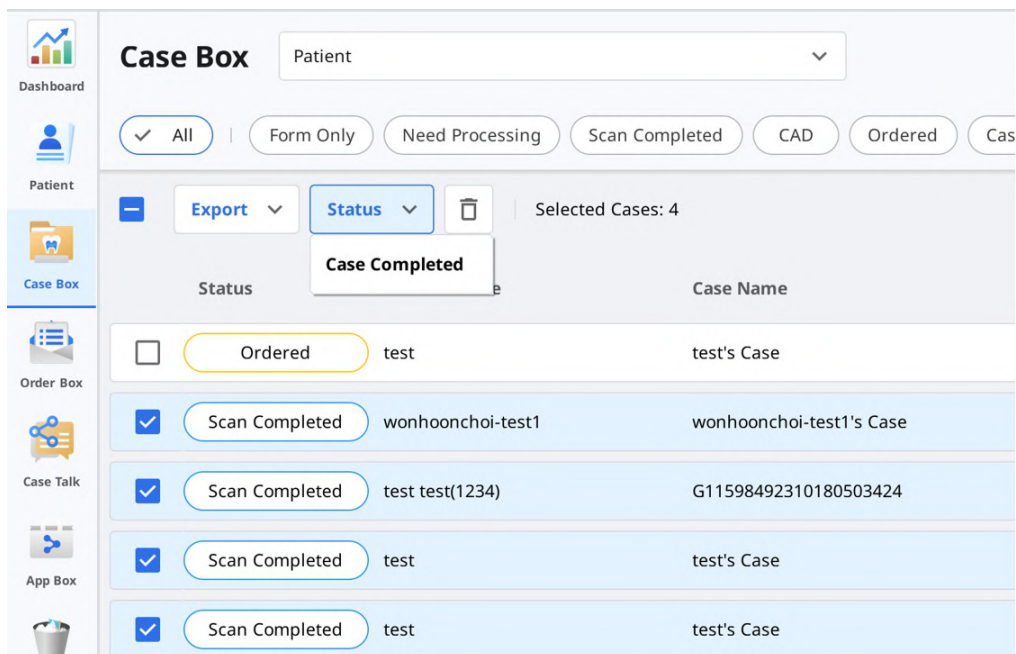

3. คลิก "สถานะ" และเลือก "Case Completed"

สื่อสารโดยใช้แท็ก

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสของคุณโดยใช้แท็ก และส่งไปยังพันธมิตรของคุณได้

เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่

คุณสามารถป้อนแท็กเมื่อคุณสร้างเคสใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเคส

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

คุณสามารถค้นหาและเลือกแท็กที่คุณเคยใช้ได้อย่างง่ายดาย

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขแท็กในกล่องโต้ตอบคำสั่งทำในขณะที่สั่งทำได้

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส

MEDIT Link 3.2.0

Order Open

Scan Completed

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...

Form File Viewer

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name × Worker_Name ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z