

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

簡介	7
Medit Link	7
服務概覽	7
雲端服務	8
帶有訂購系統的工作流程管理平臺	8

Medit Link > 安裝

系統配置要求	9
Windows系統配置要求	9
macOS系統配置要求	9
網頁端服務系統配置要求	9
瀏覽器推薦	9
行動裝置最低系統要求	9
在Windows上進行安裝	10
在macOS上進行安裝	13

Medit Link > 開始

註冊 & 登入	17
Medit Link網站	17
註冊	17
登錄和歡迎頁面	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
Dashboard概覽	21
Medit Insights	21
訂閱Medit Insights	22
取消訂閱Medit Insights	23
Patient	24
搜尋患者	24
Case Box/Work Box	25
案例篩選	25
按患者篩選	25
按狀態篩選	26
按時段篩選	27
按搜尋篩選	27
案例詳細資訊	27
Order Box/In Box	29
訂單詳細資訊	29
Order Box/In Box中索引標籤	29
Case Talk	30
創建Case Talk	30
設定共享許可權類型和共享選項	31
Case Talk詳細資訊	32
Web Viewer	33
注釋	34
備註	35

即時螢幕共享	36
數據樹	36
數據樹控制	36
3D模具控制	37
Partners	38
搜尋合作夥伴	38
我的合作夥伴列表	38
合作夥伴邀請	39
Membership	40
會員	40
計劃	40
雲端儲存空間	41
訂閱	41
取消訂閱	43
帳單資訊	44
如何添加付款方式	45
如何修改付款方式	46
兌換	47
註冊兌換碼	47
激活兌換碼	48
My Info	49
我的帳戶	49
我的診所/我的技工所(僅管理員帳戶)	49
我的掃描儀	50
其他菜單	51
通知 & 更新	51
相關網站	51
下載Medit Link應用程式	51

Medit Link > Medit Link App

概覽	53
下表概述了每種類型的診所及技工所帳戶可使用的菜單。	53
標題欄	54
我的資訊	54
通知	54
通知和更新	55
設定	55
網路狀態	56
設定	58
常規	58
存儲管理	59
設定時段	59
本機存儲空間	59
雲端儲存空間	59
設定連接的程式	60
匯出選項	60
案例轉換工具	61
匯出案例	62
匯入案例	63
Proxy選項	65
關於	65
使用者指南	65
菜單	67

Dashboard	67
Patient	67
添加新的合作夥伴	68
刪除患者	68
合併患者	68
Case Box/Work Box	69
Case Box/Work Box中的索引標籤	69
Case Box/Work Box中的功能	70
Order Box/In Box	70
Order Box/In Box中索引標籤	71
Case Talk	71
App Box	72
所有	72
Medit Apps	72
已下載	73
Trash Box	73
案例同步管理器	73
上傳	74
下載	74
相關網站	75
檔案檢視器	76
數據樹	76
模具控制工具	76
3D模具控制	76
2D影像控制	77
功能工具	78
截屏和備註	78
矯正截圖	78
填補缺口	79
修剪	79
優化咬合對齊	81
下顎移動	83
在檔案檢視器中管理多重咬合數據	84
如何管理多個結果	84
檢視選項	86
狀態篩選器	86
視圖類型	87
分組	87
排序	87
篩選和搜尋	89
按患者篩選	89
按日期篩選	90
進階搜尋功能	90
Medit Link > 工作流程	
創建/編輯/複製/刪除案例	92
創建案例	92
在Case Box中創建案例(診所)	92
在Work Box中創建案例(技工所)	93
創建案例	93
在Case Box中編輯案例(診所)	93
在Work Box中編輯案例(技工所)	94
複製案例	95

在Case Box中複製案例(診所)	95
在Work Box中複製案例(技工所)	95
刪除案例	96
刪除案例(診所和技工所)	96
表單資訊	97
在Case Box中註冊表單資訊。	97
在表單索引標籤中輸入	97
在Work Box中註冊表單資訊。	97
在表單索引標籤中輸入	97
將牙齒連接至牙橋	97
設定掃描選項	98
Medit Scan for Labs	98
常規選項	98
基於牙齒的選項	98
添加至喜好項目	98
添加至喜好項目	98
管理喜好項目模板	99
操作掃描/CAD	100
掃描流程	100
CAD流程	100
利用附加應用程式	100
附加快速啟動器	100
應用程式啟動器管理	100
快速啟動器	101
所有應用程式	101
獲取結果檔案	102
匯出掃描結果檔案	102
從「案例列表」中匯出結果檔案	103
從「檔案檢視器」中匯出結果檔案	104
從「數據樹」中匯出結果檔案	106
匯出案例列表為CSV	108
匯出邊緣線	108
以顏色的形式匯出邊緣線	108
以檔案的形式匯出邊緣線	109
從Medit Link網頁端下載檔案	109
Case Box/Work Box	110
Web Viewer	110
訂購/管理訂單	113
訂購案例	113
確認訂單(In Box)	113
取消的訂單(Order Box)	114
拒絕訂單(In Box)	114
查看已訂購案例	114
輸入運送資訊(In Box)	114
管理交付日期	115
設定「請求的交付日期」(診所帳戶)	115
設定「預計交付日期」(技工所帳戶)	115
完成案例	116
完成(Work Box/In Box)	116
從「案例詳細資訊」頁面完成案例	117
從「案例列表」中完成對多個案例的操作	117
完成(Case Box/Order Box)	117
在Case Box中結束對未訂購案例的操作	118

使用標籤來溝通	119
創建新案例時添加索引標籤	119
訂購時添加索引標籤	120
查看案例詳細資訊上的標籤	120

簡介

Medit Link

Medit Link是一款協力工具，旨在促進診所與技工所之間的交流，從而為各方優化工作流程。

基於每個帳戶的類型及許可權不同，其提供的功能也有所差異。該程式還提供了方便使用的使用者介面，讓使用者能夠輕鬆管理工作流程、使用口內與模型掃描儀進行掃描、進行案例下單，以及設計和製造修復體。

Medit Link包含網頁端服務及電腦應用程式。

服務概覽

		網頁	應用程式
		• 註冊和管理賬號 • 搜尋和管理合作夥伴 • 透過Web Viewer, 使用可共用連結來共用案例 • 訪問從應用程式創建的案例 • 管理訂單	• 輸入表單資訊 • 掃描 • 管理訂單 • 關聯CAD • 管理患者
診所	管理員	搜尋並管理合作夥伴和您的診所，並共享案例。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	輸入表單資訊，進行掃描，下訂單，以及管理患者。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
技工所	管理員	搜尋並管理合作夥伴以及您的技工所，以及共享案例。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	輸入表單資訊，進行掃描，以及管理訂單。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

雲端服務

Medit Link支援通過亞馬遜網路服務(AWS)自動上傳/下載資料庫及檔案。

存儲在雲端的數據將自動與機構內多個使用者的電腦同步，以便使用者可以隨時從任何電腦上訪問到該數據。基於雲端的備份及復原功能可確保您所有數據的安全性。即使在電腦突然發生故障導致數據丟失的情況下，其也依舊能保證您的數據得到安全保存。

雲端服務可讓牙醫與技工所之間能夠更快速地共用數據，進而免去了通過電子郵件或手動傳輸掃描檔案所帶來的諸多繁瑣及不便。所有與患者資訊相關的數據均會以安全的方式進行加密處理、存儲及傳輸。Medit遵循諸如HIPAA與GDPR等醫療法律及法規。

帶有訂購系統的工作流程管理平臺

Medit Link提供有自己的訂購系統。

- Medit Link可讓使用者創建牙醫與牙科技工所之間的合作夥伴關係並便捷地進行數據共享。
- 您可以查看並管理訂購狀態。

系統配置要求

🔍 重要資訊

如您想將掃描儀與掃描軟體搭配使用，請參考Medit Scan for Clinics和Medit Scan for Labs的系統要求。

Windows系統配置要求

	筆記型電腦 & 桌上型電腦
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz或更高
RAM	16GB或以上
顯卡	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) 或更高/或同等AMD顯卡
作業系統	Windows 10 64位 (不可用於32位) 或更高

macOS系統配置要求

	Mac
處理器	配備8核心GPU、7核心GPU、16核心神經網路引擎之M1
RAM	16GB或以上
作業系統	Monterey 12或更高

網頁端服務系統配置要求

瀏覽器推薦

	瀏覽器
電腦	Chrome、Firefox、Safari、Edge(Chromium)
Android	Chrome、Firefox
macOS	Safari、Chrome、Firefox


行動裝置最低系統要求

	Android	iOS
裝置	Galaxy S7同等或更高級別裝置	iPhone 7同等或更高級別裝置
作業系統	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB或以上	2GB或以上
AP	Above Snapdragon 710以上	A10 Fusion

在Windows上進行安裝

Medit Link將以安裝包的形式與掃描獲取程式Medit Scan for Clinics和Medit Scan for Labs一併安裝。


1. 運行Medit_LinkSetup.exe。
2. 選擇安裝語言。
3. 選擇安裝Medit Link的資料夾。請閱讀並同意許可條款與條件並點點擊「安裝」。

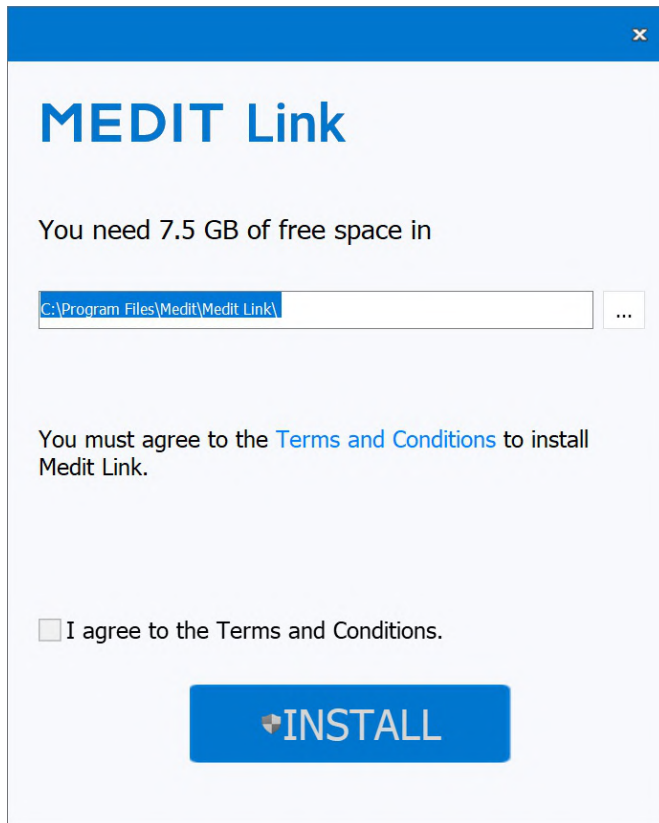

4. 請確保在進入下一步前將掃描儀線纜從電腦端斷開。如掃描儀已連接至您的電腦，安裝將無法繼續進行。
5. 程式將自動進行安裝，安裝過程可能會持續幾分鐘。在安裝完成之前，請勿關閉電腦或斷開其電源。



6. 請在安裝完成後，重新啟動您的電腦。如您沒有掃描儀，則無需重啟電腦。

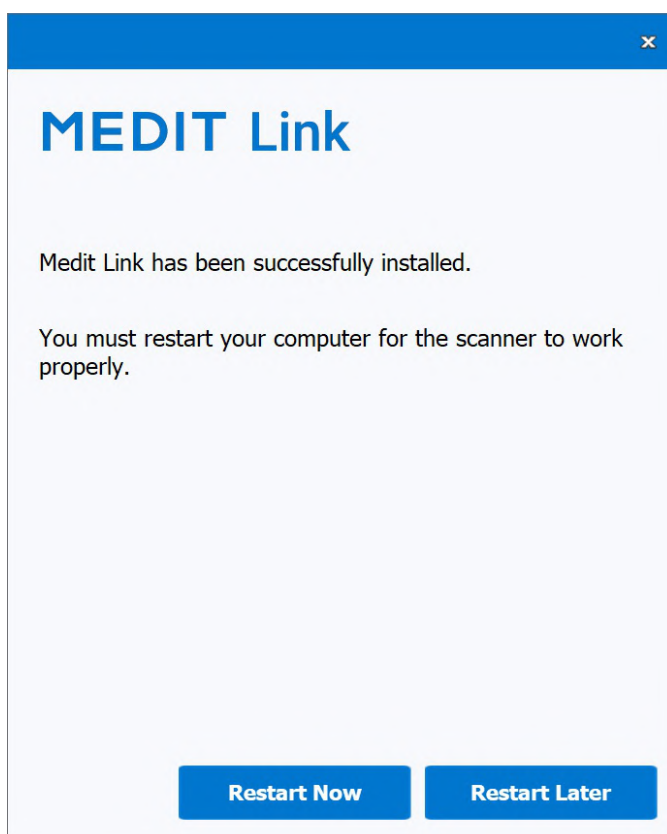


重要資訊

如在安裝完成後不重啟您的電腦，則掃描儀可能無法正常運行。


在macOS上進行安裝

Medit Link將以安裝包的形式與Medit Scan for Clinics一併安裝。


1. 運行Medit_Link_x.x.x.pkg, 然後點擊「繼續」。

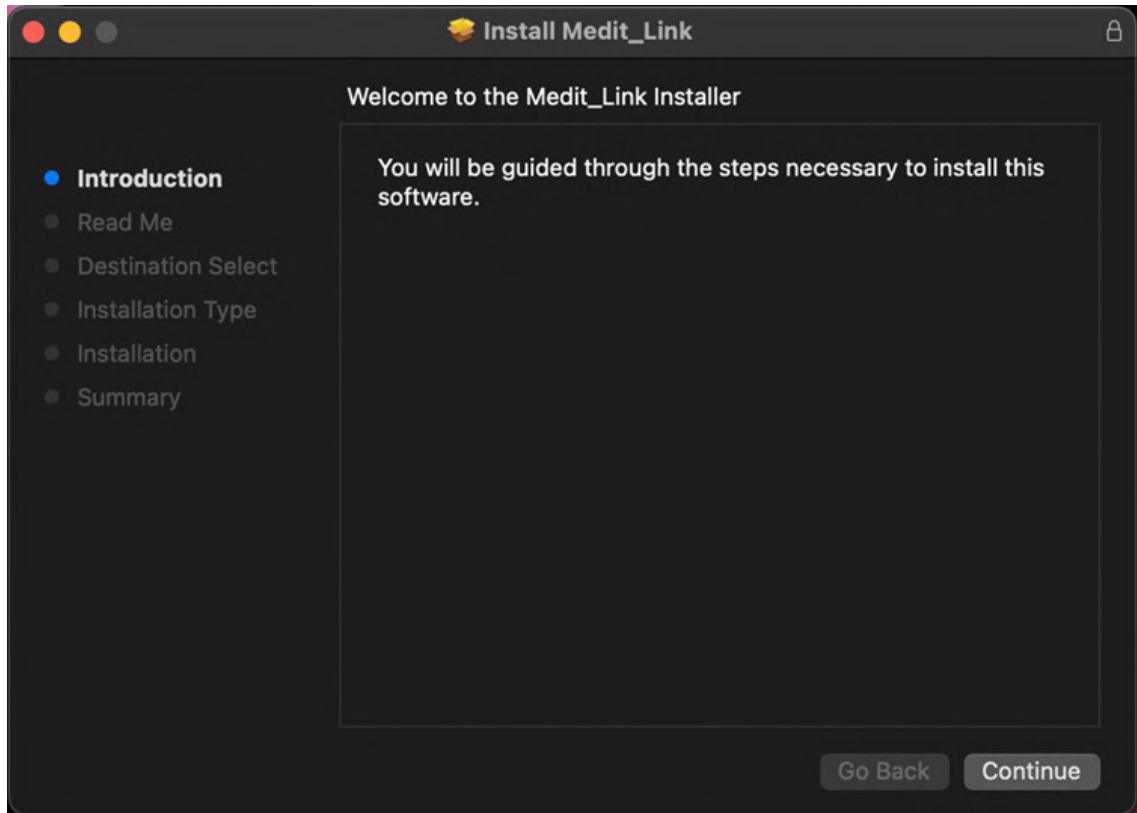


2. 閱讀《終端使用者許可協議》，然後點擊「繼續」。

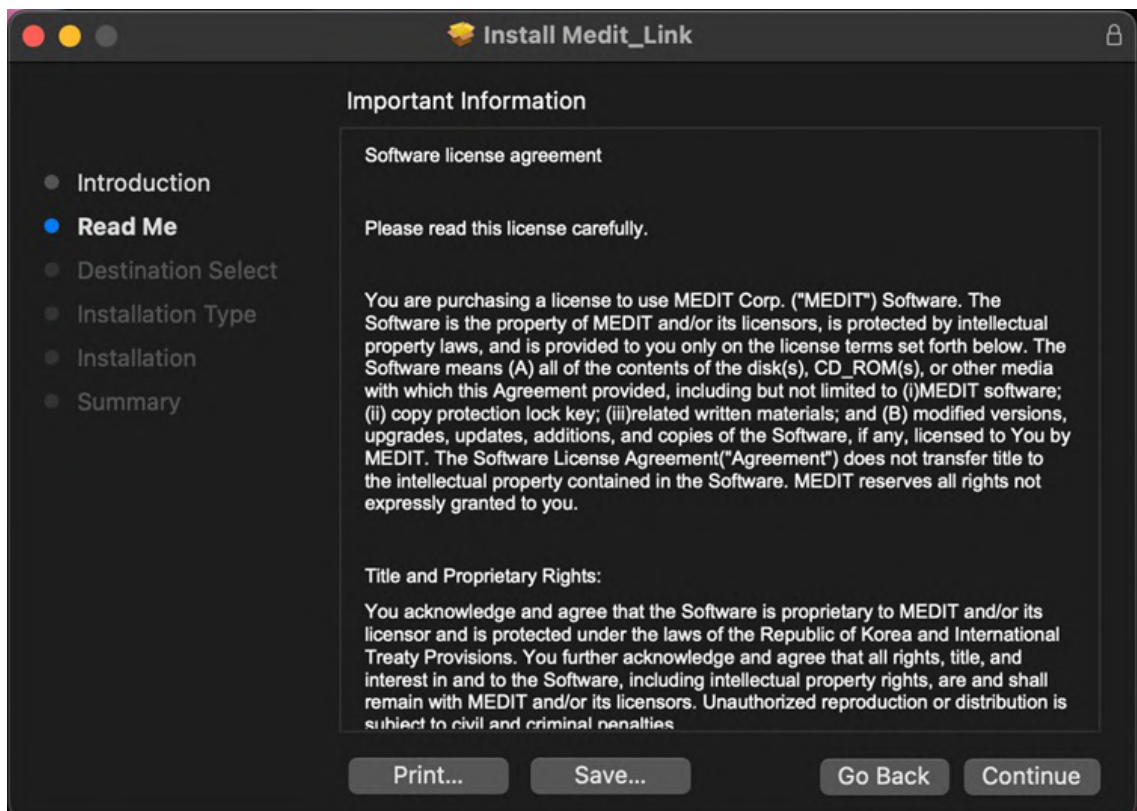

3. 選擇安裝程式的磁碟, 然後點擊「繼續」。

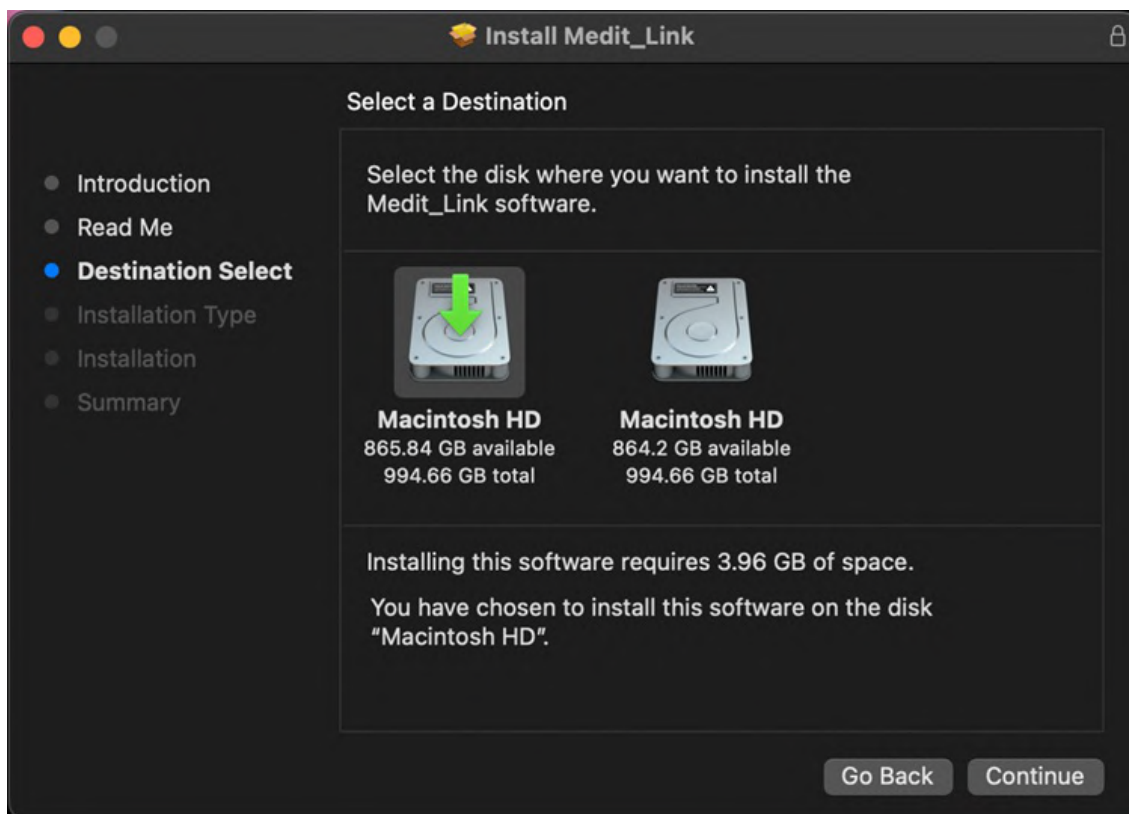


4. 點擊「修改安裝位置...」，修改安裝之目標資料夾。

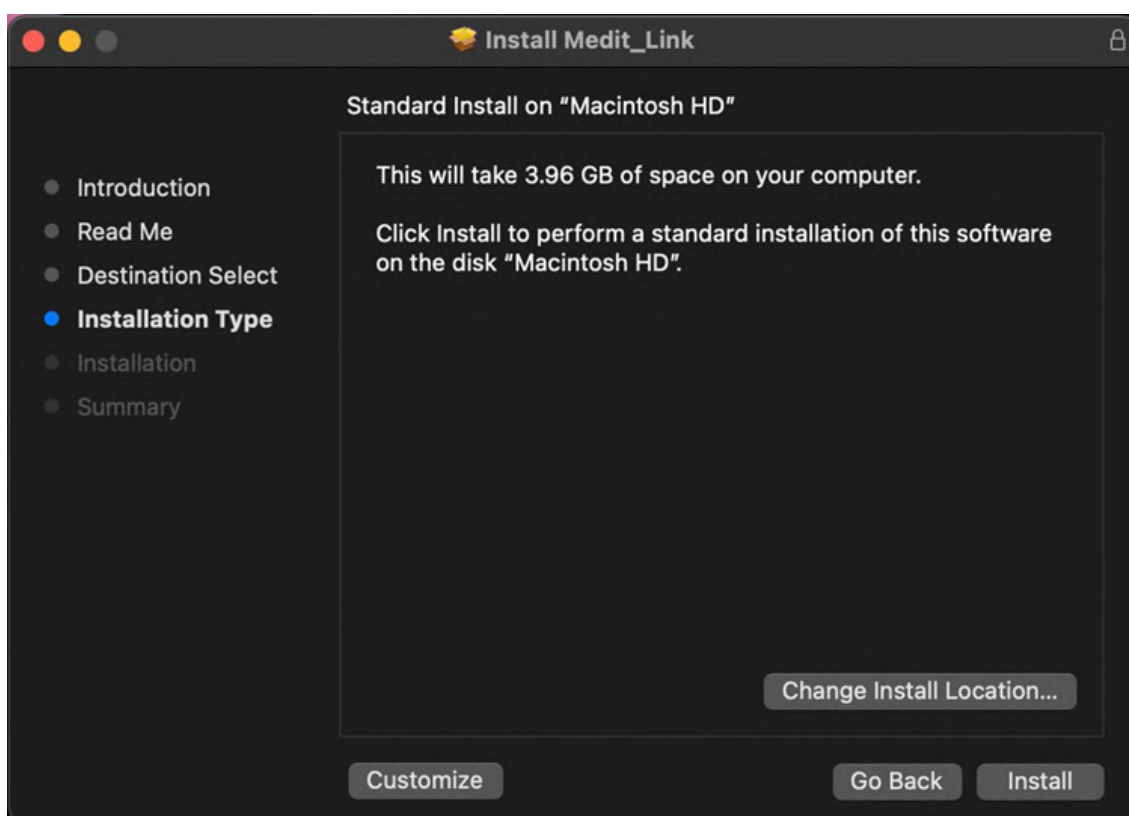


5. 點擊「安裝」，然後輸入您的Mac密碼來允許進行安裝（如被要求）。



6. 稍等片刻直至安裝完成。

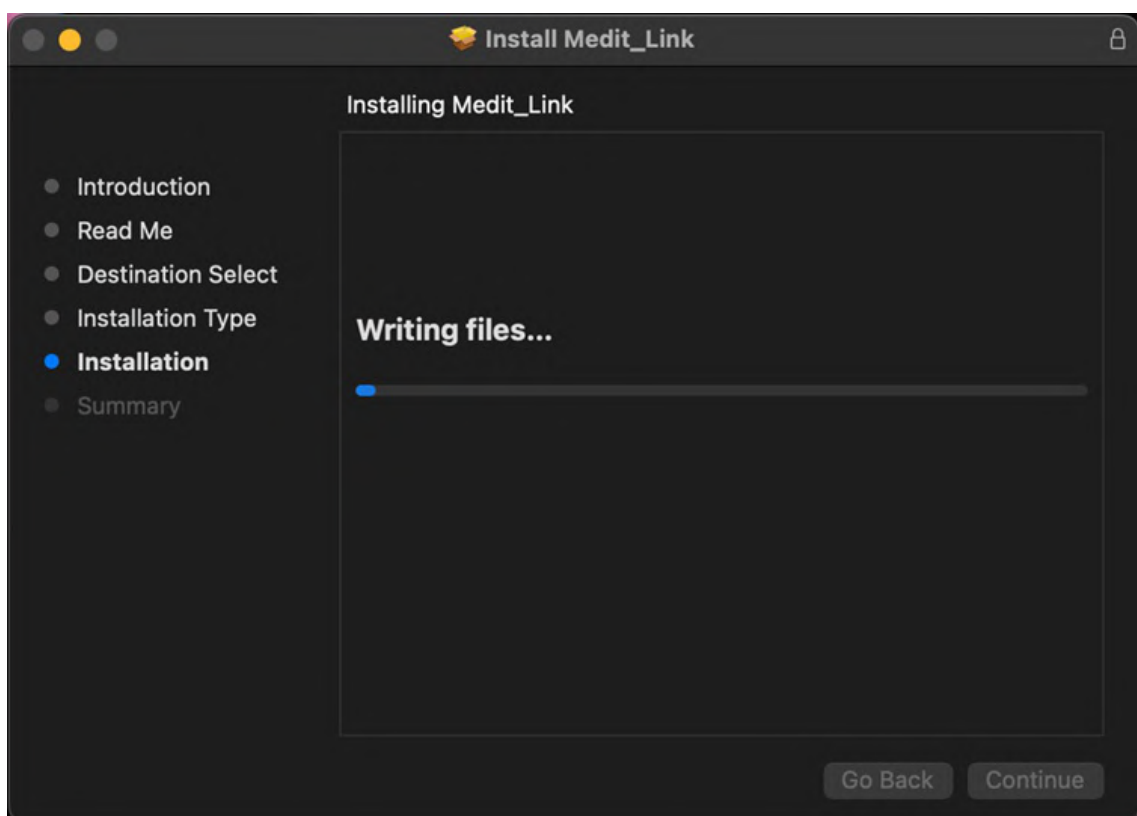

7. 點擊「關閉」，退出安裝視窗。

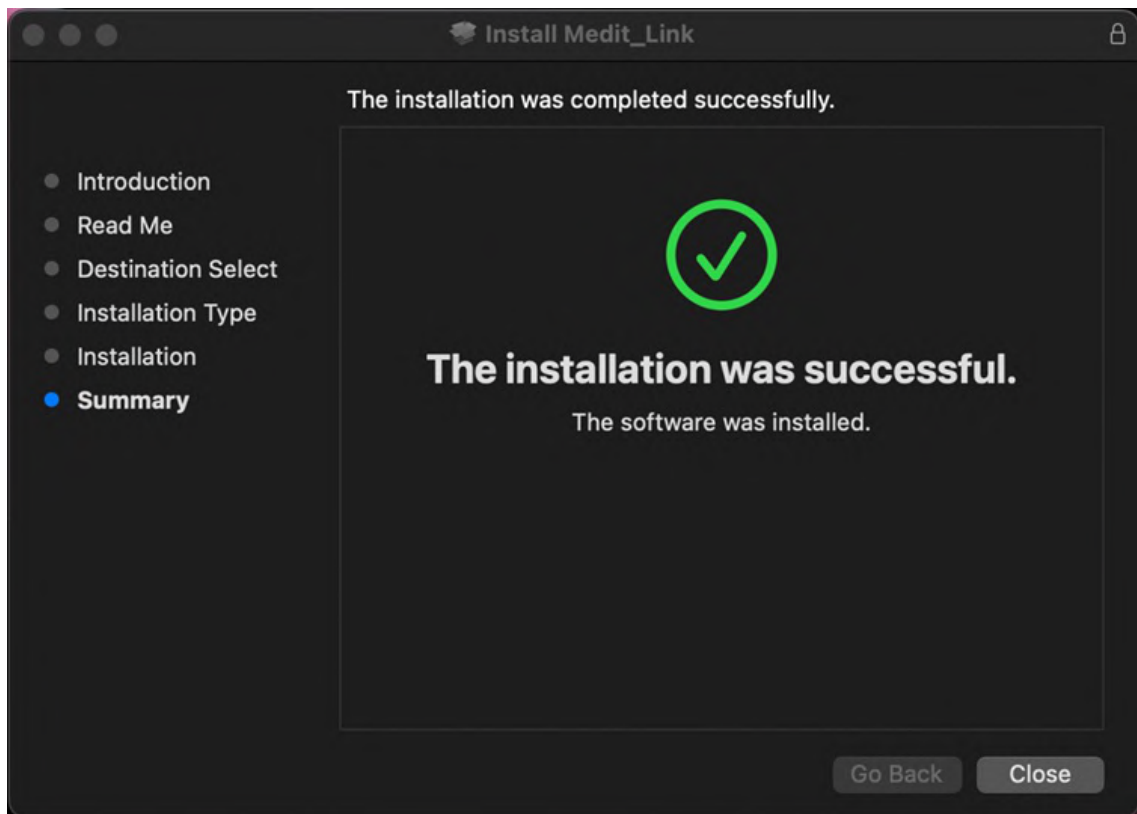

註冊 & 登入

Medit Link網站

在www.meditlink.com中註冊Medit Link服務。



註冊

如要使用Medit Link服務，您必須註冊一個帳戶。您可以在以「診所」或「技工所」的身份註冊了帳戶後使用Medit Link所提供的各項功能。

使用者可以選擇以下4種帳戶類型的任意一種來註冊會員，並根據帳戶類型來使用具有全部或有限功能和權限的服務。

- 診所 - 管理員
- 診所 - 會員
- 技工所 - 管理員
- 技工所 - 管理員

管理員通常是您所在機構的代表並將有权使用Medit Link的所有功能及服務。相比之下，會員帳戶的訪問權則往往受限。

要請註冊會員，請按照下列步驟操作：

1. 在登入頁面，點擊「您还没有账户？請註冊」。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) 

2. 閱讀所提供說明後，點擊所需帳戶類型的「註冊」按鈕。

Create Your Medit Link Account



Clinic

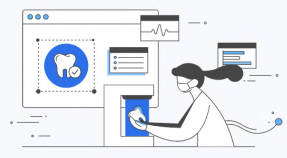

Lab

Administrator Dentist, Manager Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link. ✓ Scan/Order/Manage orders ✓ Manage members Register	Administrator Laboratory Director, Manager Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link. ✓ Scan/Manage ordered cases ✓ Manage members Register
Member Dental Hygienist, Dental Staff Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval. ✓ Scan/Order/Manage orders Register	Member Dental Technician, Laboratory Staff Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval. ✓ Scan/Manage ordered cases Register

3. 如下圖所示的註冊表單將會出現。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

- 輸入診所或技工所名稱，然後根據您所需的帳戶類型進行如下操作：
 - 如您以「管理員」的身份註冊，請單擊「查看可用性」來查看所輸入的名稱是否可用。
 - 如您以「會員」的身份註冊，請單擊「搜尋」。管理員須在您註冊帳戶前已經註冊了您的機構。
- 填寫剩下的註冊表單，然後點擊「註冊」。

重要資訊

如您在註冊過程中同意接收行銷資訊，那麼您隨後便將從Medit收到有關產品及服務的實用資訊。

- 我們將向您發送一封驗證電子郵件。
- 要完成註冊流程，請您通過所收到的連結來驗證您的電子郵件地址。

登錄和歡迎頁面

- 在登錄頁上輸入您的電子郵箱地址及密碼，然後點擊「登入」。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. 如您未填寫企業資訊，如下圖所示的對話方塊便會出現。

Welcome, stage-test-wh!

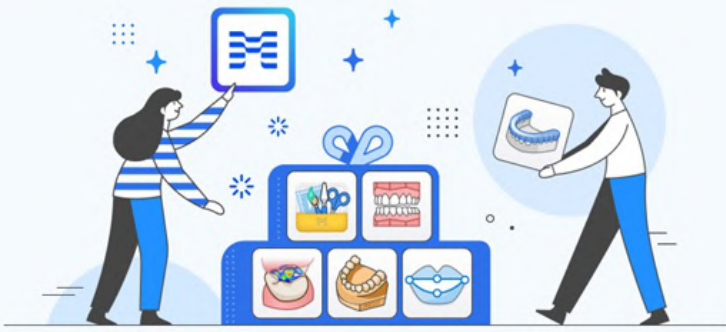

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

 **重要資訊**


要使用Medit Link服務，請使用管理員帳戶來輸入您的診所或技工所資訊。

3. 點擊「轉到我的診所」或「轉到我的我的技工所」按鈕並輸入診所或技工所資訊，包括企業名稱、封面/標識圖片、您提供的服務、辦公室地址、辦公室電話等。
4. 您可以隨時在從Medit Link網頁端的「My Info」>「我的診所」或「我的技工所」索引標籤中編輯您在歡迎頁面中所輸入的資訊。

Dashboard

Dashboard概覽

您可以通過視覺化的圖表（Medit Link應用程式及網頁端均可）來瞭解您在Medit Link所完成的全部工作的統計數據。

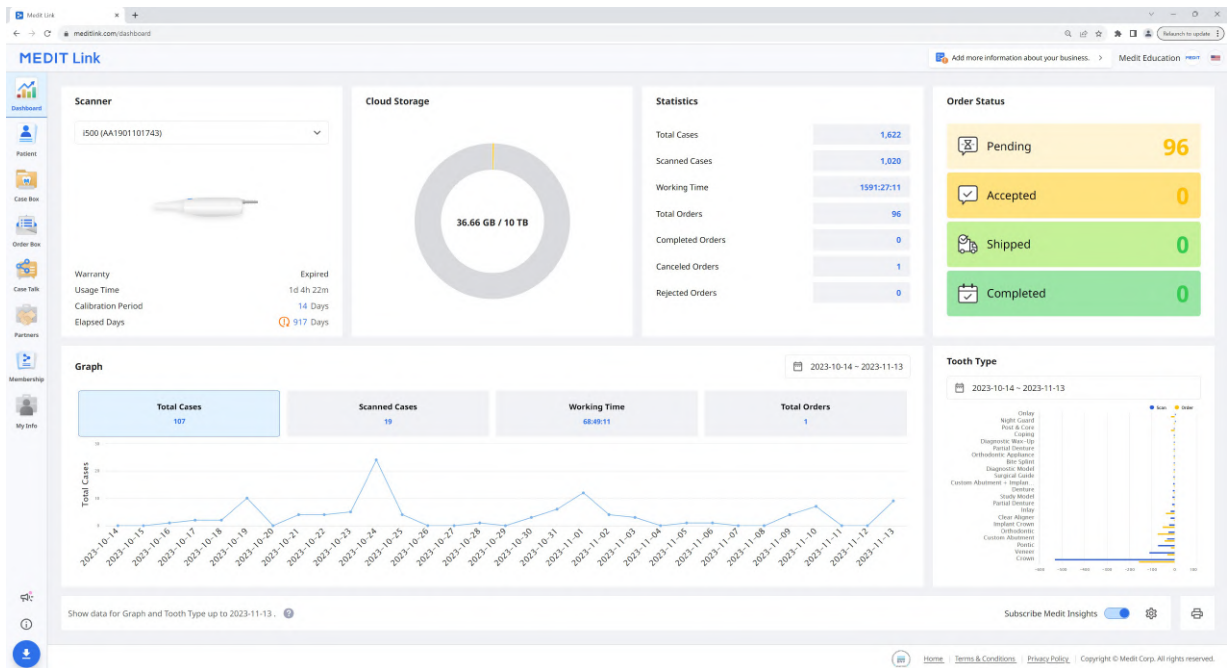

Dashboard中的圖表可顯示您在Medit Link中所完成的全部工作的統計數據。

掃描儀	提供當前所使用掃描儀的相關資訊，包括保固、掃描儀使用時間、校準間隔及校準歷時。
雲端儲存空間	顯示雲端存儲的總容量及當前使用量。
統計數據	基於工作狀態提供案例的相關統計數據。
訂單狀態	基於訂單狀態提供案例的相關統計數據。
圖表	按時段用圖表顯示工作資訊。
牙齒類型	透過治療資訊提供有關掃描與訂單數量的統計數據。


Medit Insights

Medit Insights旨在為您提供相關的報告服務，以此有助於分析您的使用統計數據。

🔍 重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Medit Insights

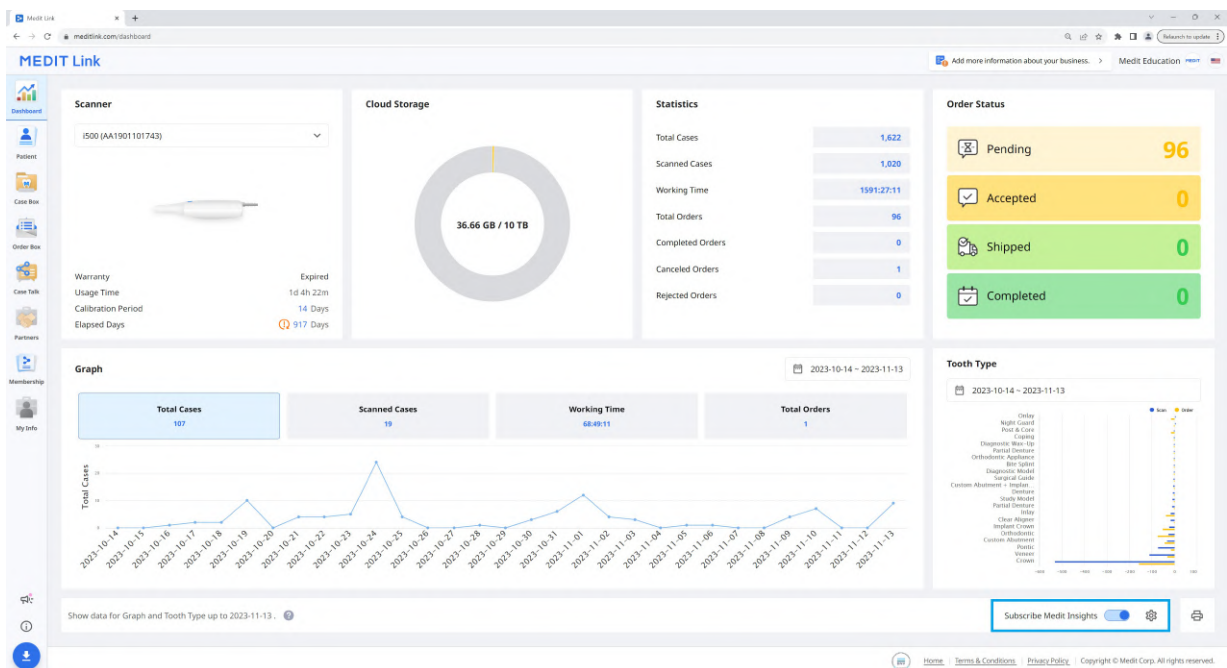

訂閱Medit Insights

您可以在每個月的第2天收到一封包含統計報告的電子郵件。無需任何其他註冊過程。只需開啟「訂閱Medit Insights」選項即可。

如您不想使用您註冊Medit Link帳戶時所使用的電子郵件地址，那麼您可以設定另一個電子郵件地址來接收Medit Insights的報告。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.


The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

22

您將在每個月的第2天收到包含如下圖所示的統計數據的電子郵件。

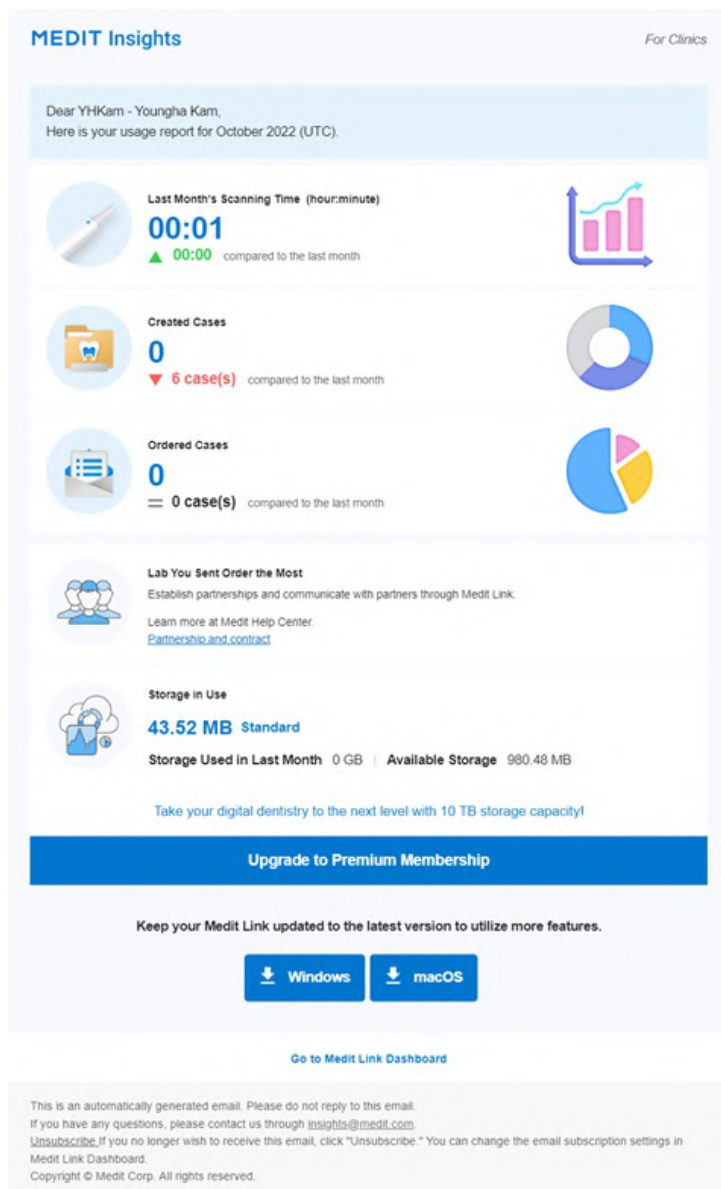

標題欄	Medit將在此處提供一些實用的提示及資訊。 * 如您不想看到這一標題欄，請在「我的資訊」>「我的帳戶」中取消對「行銷和促銷協議」的勾選。
統計數據資訊	可顯示諸如掃描時間、創建案例數以及訂購量最大的技工所等統計數據數據資訊。
Medit Link下載	此按鈕提供Medit Link的下載連結。
Dashboard	所有統計數據資訊均基於您的Dashboard資訊。您可以在Dashboard中瞭解更多詳細資訊。


取消訂閱Medit Insights

在Dashboard中關閉「訂閱Medit Insights」或在收到的電子郵件中單擊「退訂」。

Patient

您可以基於患者姓名與患者ID來管理案例。


所有通過Medit Link應用程式註冊的患者均將顯示在列表中，從而使您可以更容易地來管理患者及其案例。

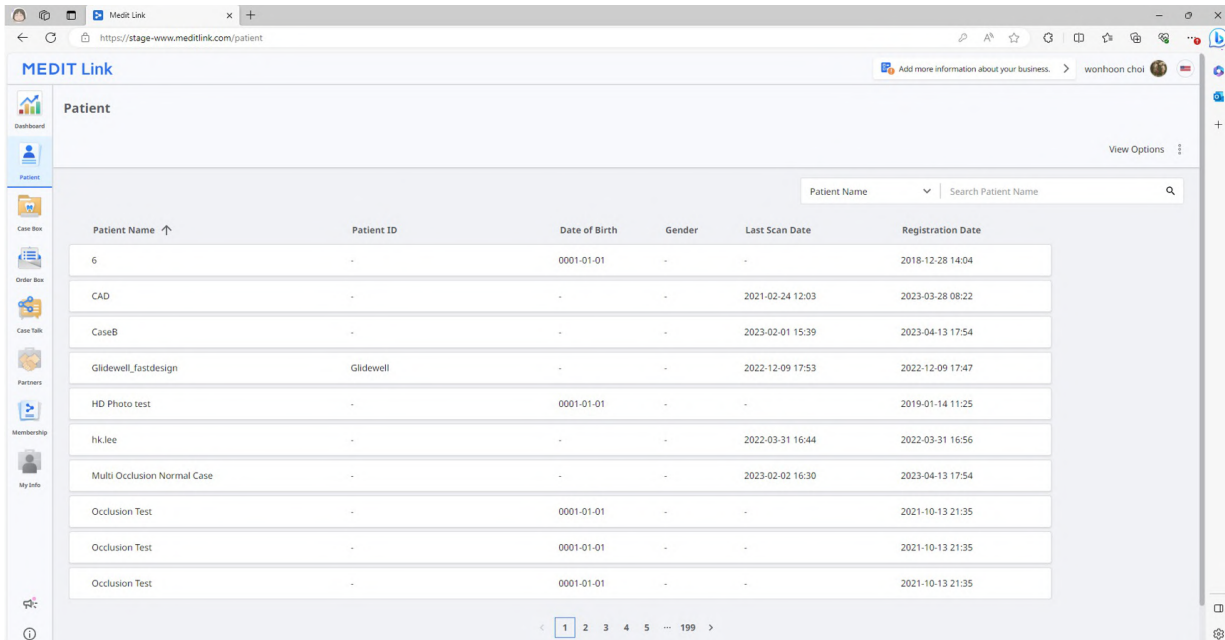

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
GlideWell_fastdesign	GlideWell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

搜尋患者


1. 從患者列表右上角下拉式選項單中的「患者姓名」與「患者ID」之間選擇您的搜尋條件。

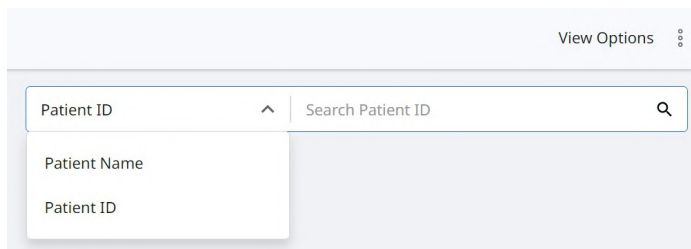

2. 根據所選搜索條件輸入要搜索的患者姓名或患者ID。
3. 只有輸入了患者姓名或ID的患者才會顯示在列表中。

Case Box/Work Box


Case Box(診所)或Work Box(技工所)可顯示使用者在Medit Link應用程式中所創建的所有案例. 可以在無需安裝單獨程式的情況下通過網頁瀏覽器來查看檔案。

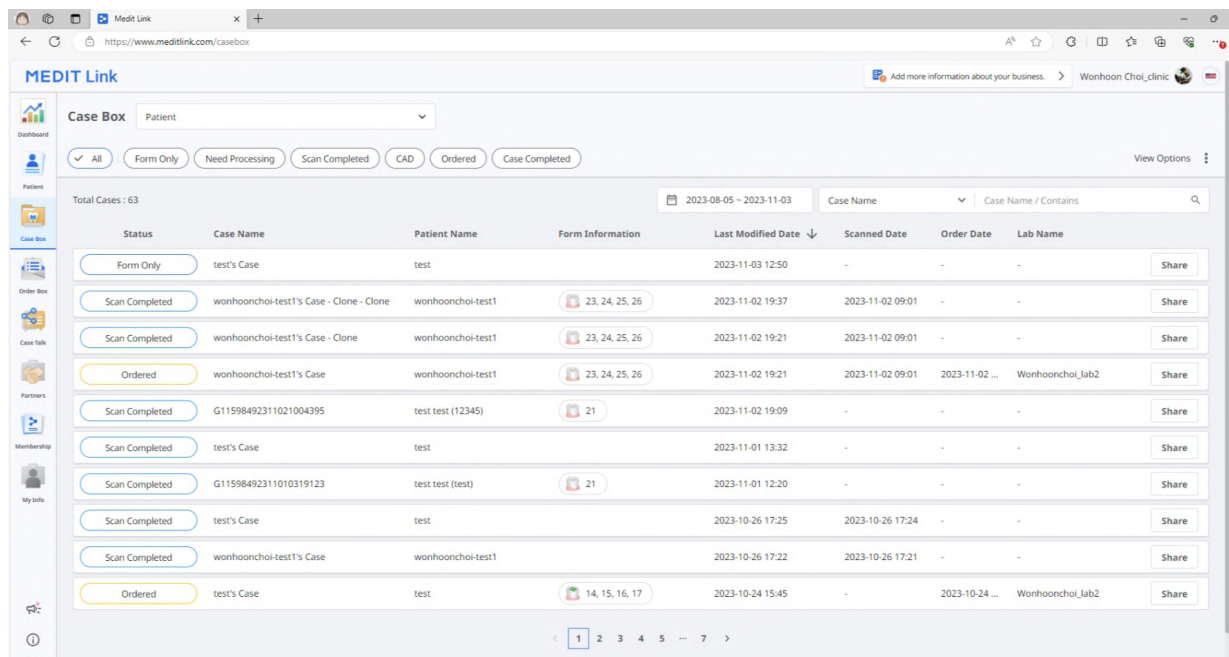


案例篩選

按患者篩選

您可以按患者來篩選案例。其適用於您為特定患者查找案例時的情況。

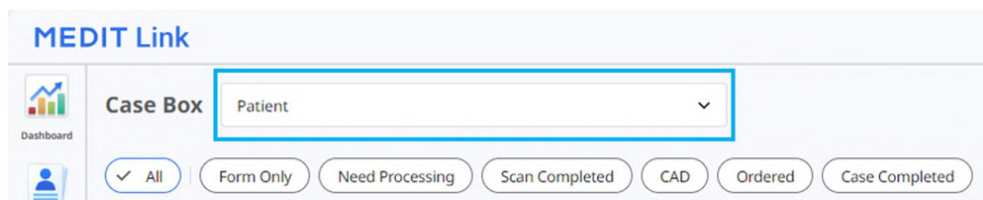

1. 在搜尋欄中輸入患者姓名。

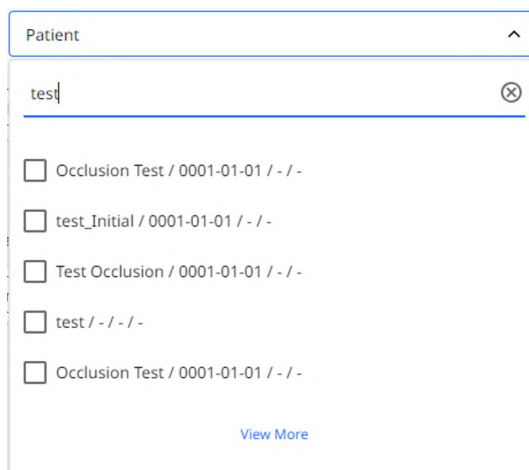

2. 從搜尋結果列表中選擇相應的患者。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. 列表中僅顯示所選患者的案例，從而可更容易讓您找到要進行操作的案例。

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface. The top navigation bar includes the MEDIT Link logo and a user profile for Wonhoon Choi. The main section is titled 'Case Box' and features a filter bar with buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'Form Only' button is currently selected. Below the filter bar, a table displays a list of cases. The table has columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The cases are filtered to show only those with the 'Form Only' status.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

按狀態篩選

您可以基於狀態來篩選案例。

- 使用者可以點擊其想要查看的狀態。瀏覽器將僅顯示所選狀態中的案例。
- 使用者可以一次性選擇多個狀態。

程式將基於帳戶類型來提供下列狀態類型：

Case Box(診所)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box(技工所)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


按時段篩選

您可篩選並顯示在您設置的時間段內進行過最後一次修改的案例。

1. 點擊時段篩選。



2. 選擇時間範圍。

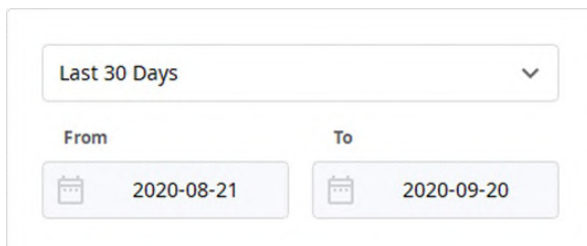


- 所有：顯示全部案例。
- 自訂時間範圍：指定對案例進行過修改的起始及結束日期。
- 今天：顯示在當天進行過最後一次修改的案例。
- 昨天：顯示在昨天進行過最後一次修改的案例。
- 過去7天：顯示除當天外在過去7天內進行過最後一次修改的案例。
- 過去30天：顯示除當天外在過去30天內進行過最後一次修改的案例。
- 過去90天：顯示除當天外在過去90天內進行過最後一次修改的案例。
- 本月：顯示本月的案例。
- 上個月：顯示上一個月的案例。

若所選時段內已創建過或最近修改過案例，案例列表將被即時更新。

按搜尋篩選


您可以利用搜尋功能來快速便捷地搜索所需的資訊。

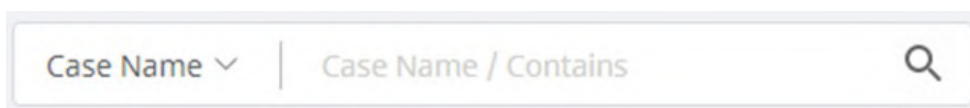

程式將基於帳戶類型來提供下列搜尋選項：

Case Box(診所)	案例名稱、患者姓名、患者ID、技工所名稱
Work Box(技工所)	案例名稱、患者姓名、診所名稱、訂單ID

案例詳細資訊

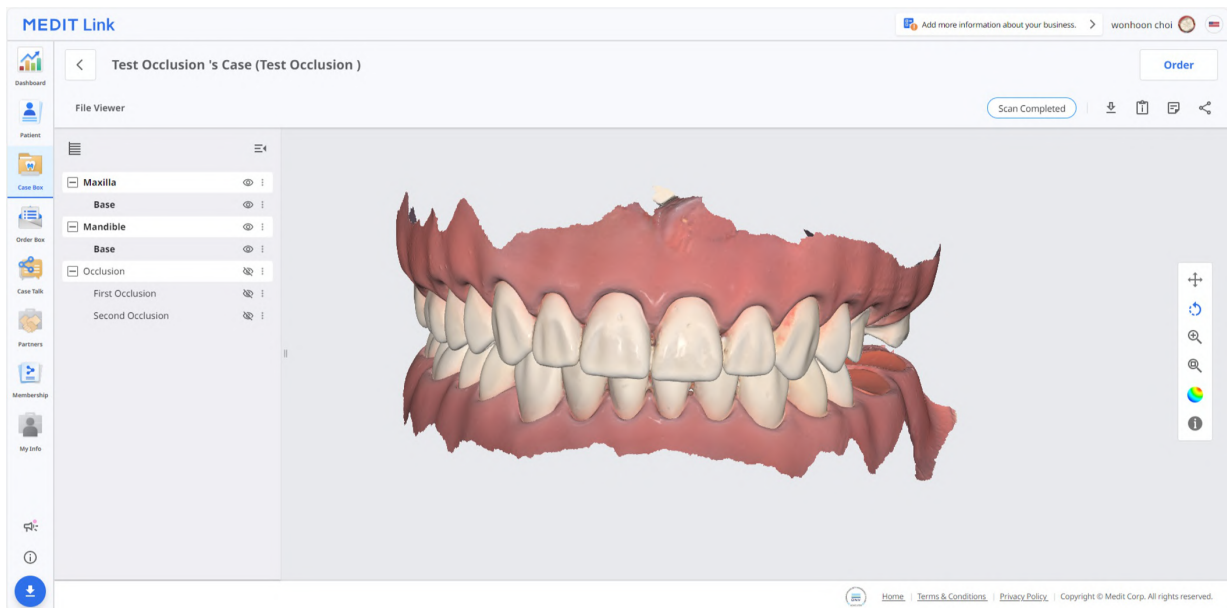

Case Box/Work Box中提供下列案例管理工具：

	案例狀態	顯示案例的狀態。
	轉至Order Box/In Box	可在另一個Box中為同一案例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box)。
	下載	可將案例的檔案下載至本地電腦端。
	案例資訊	檢查案例詳細資訊並將其保存為PDF或進行列印。
	備註&標籤	在註冊或訂購案例時添加備註或標籤。使用該功能來與您的合作夥伴溝通有關案例的任何附加或補充資訊。
	共享	可創建一條用於共享的連結。 獲得共享連結的使用者可在無需安裝附加程式的情況下通過諸如Chrome、Firefox或Safari等瀏覽器來訪問3D數據。

Order Box/In Box

Order Box(診所)或In Box(技工所)顯示使用者在Medit Link應用程式中所訂購的案例。

訂單詳細資訊

The screenshot displays the 'MEDIT Link' web application interface. The main header shows the title 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' and a 'Cancel Order' button. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is divided into two sections: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' section contains fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-27), Order Date (2023-04-20 PM 02:08), Requested Delivery Date (2023-04-27), and Expected Delivery Date (2023-04-27). The 'File Viewer' section displays a table of products with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The table lists four items (23, 24, 25, 26) all of Type 'Inlay', Method '-', Material 'Multi-Layered Zi...', and Shade 'None'. The status 'Pending' is shown at the top right of the main content area.

- 1 顯示案例名稱及患者姓名。
- 2 提供進行訂單管理的相關功能(接受/取消;交付/接收)。
- 3 顯示可用索引標籤: 訂單和檔案檢視器。
- 4 顯示管理案例及檔案的功能: 案例狀態、詳細資訊的快速鍵、案例資訊、備註& 標籤等。
- 5 顯示包括訂單號、患者姓名、合作夥伴名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備註& 標籤等訂單的詳細資訊。
- 6 顯示已訂購產品的資訊及交付狀態。


Order Box/In Box中索引標籤

訂單	檔案檢視器
查看諸如訂單ID、患者姓名、帳戶名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備忘錄及索引標籤等與訂單有關的詳細資訊。	查看掃描/CAD操作所生成的檔案。 檔案檢視器顯示並管理程式所獲取或附加的3D模型及2D影像。

Case Talk

在Medit Link所創建的案例可與特定的人、擁有連結的任何人或Medit Link的註冊會員所共享。

使用者可以在Medit Link應用程式及Medit Link網頁端中通過「Case Talk」查看所有共享案例的列表。

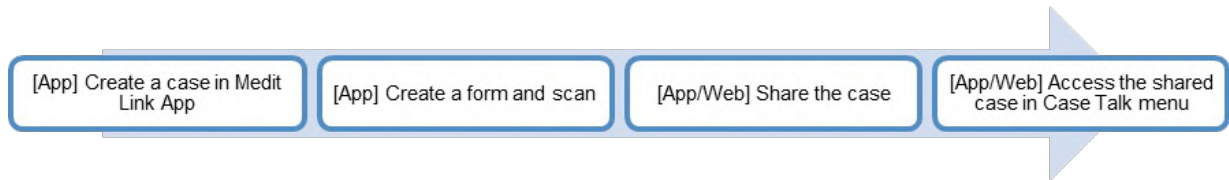


可以在無需安裝單獨程式的情況下通過Web Viewer查看所共享的案例，輕鬆地在各種設備上針對3D資料進行交流。


創建Case Talk

您可向在Case Box/Work Box中所創建的案例創建共享連結。

1. 找到您要共享的案例並點擊右側的「共享」按鈕。

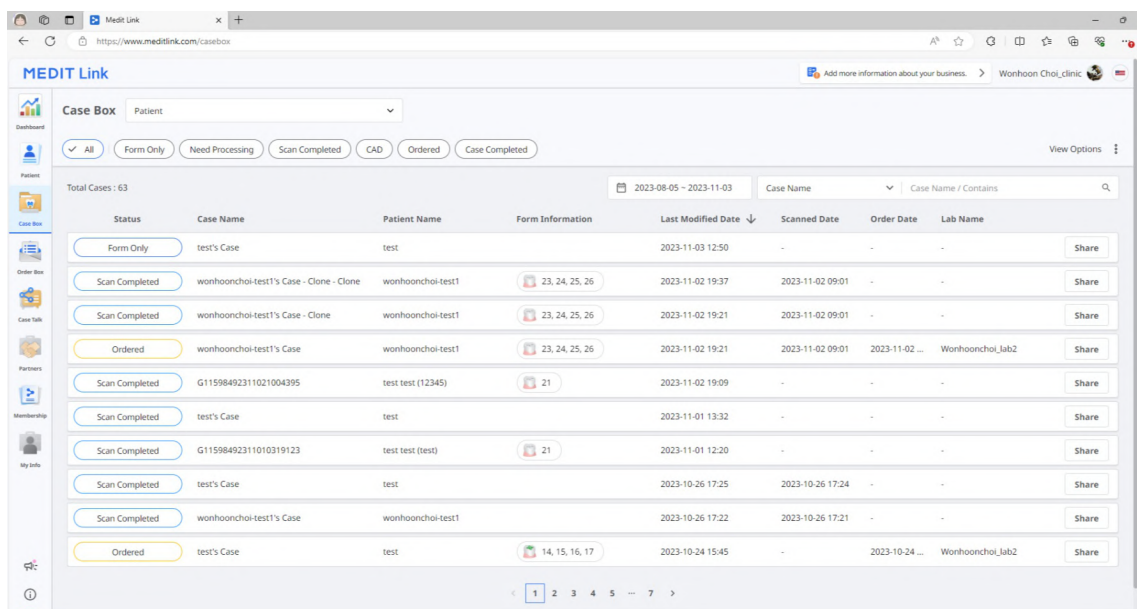

2. 選擇您要共享檔案。

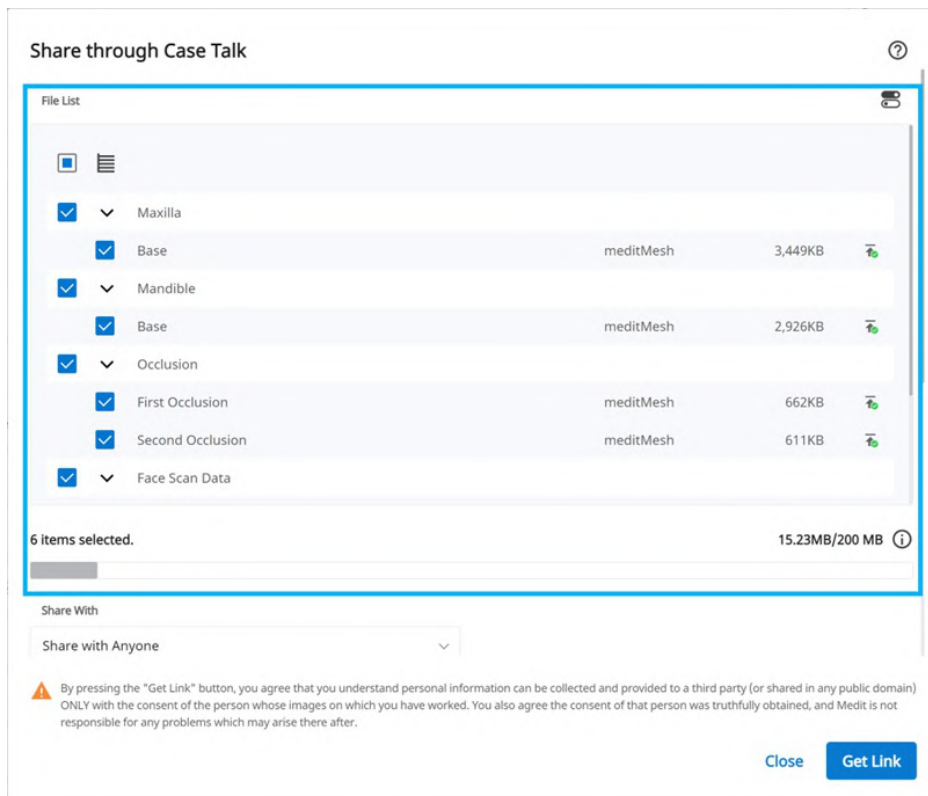

3. 設定共享許可權類型和共享選項。
4. 點擊「獲取連結」，創建一個共享連結。

設定共享許可權類型和共享選項

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.
The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

共享人	- 與任何人分享 創建一個共享連結。您可以與任何人共享相應的檔案。 - 與特定的人共享 創建共享連結並將其發送至特定的人。
共享方式	如您選擇「與特定的人共享」，您可以通過多種方式與其共享連結。 - 電子郵件地址 - 簡訊 - 合作夥伴
到期日期	設定連結的到期日期。在連結過期後，您與之共享連結的人將無法再訪問檔案。您可以將過期時間延長最多90日（從當天算起）。
PIN碼	可設定一個6位數的密碼以確保數據的安全。
共享患者的姓名	如您勾選該選項，擁有該連結的所有人均可以看到患者的姓名。
授予下載權限	如您勾選該選項，那麼擁有該連結的所有使用者均可以下載相應的檔案。
允許加備註	- 如您勾選該選項，您便可以通過共享連結來進行溝通。 - 如您取消勾選該選項，連結的接收者便只能查看您的備註，無法添加其自己的備註。
備註	您可以在備註區域留下訊息。

Case Talk詳細資訊

32

您可以在共享案例中查看相應的檔案。Case Talk詳細資訊頁面提供如下功能：

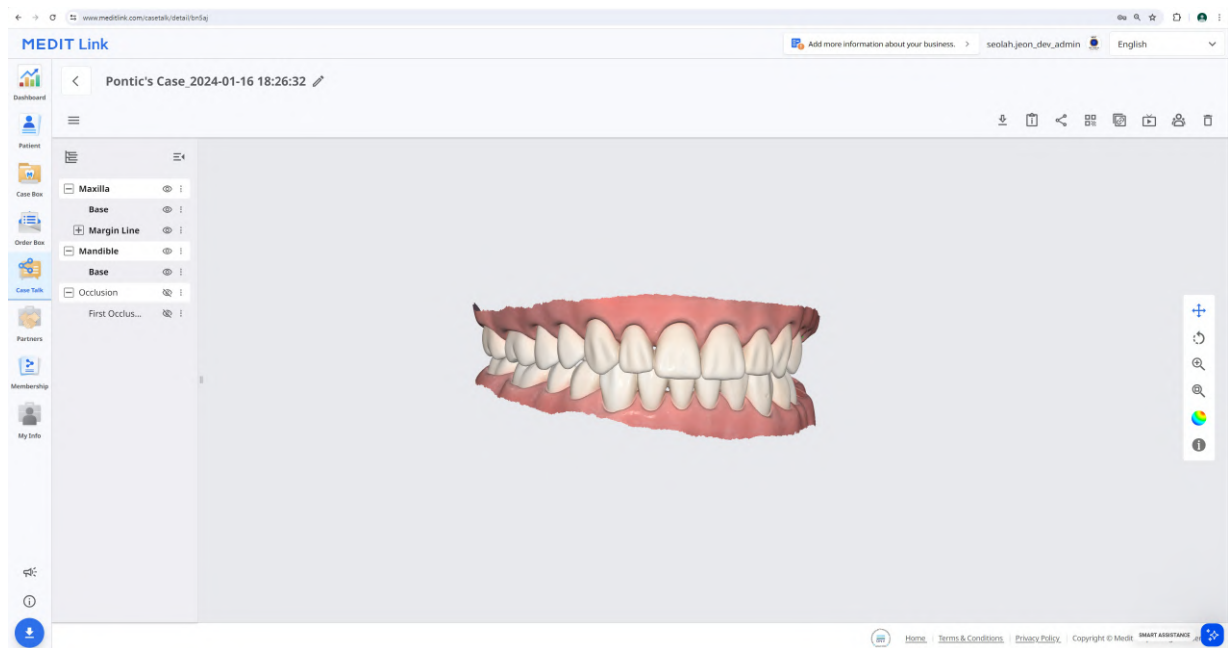

	下載	將案例中的所有檔案下載到本地電腦端。
	案例資訊	顯示有關案例的詳細資訊。
	共享	修改共享設定。
	二維碼	通過二維碼共享案例。
	複製連結	可將共享連結複製到剪貼簿。透過複製的連結，可將所共享的檔案在網頁瀏覽器上進行顯示。
	Live	可與所連接的使用者共享您的螢幕。 螢幕共享將與所有連接的使用者實現同步化。
	參與者	顯示訪問共享連結的所有使用者。
	刪除	刪除共享連結。被刪除的共享連結將無法再進行訪問。

重要資訊


下列服務不適用於Medit Link China。

- Live
- 參與者

Web Viewer

您可以在網頁瀏覽器中通過Case Talk查看所共享的數據。

還可與有權訪問連結的人通過注釋及備註來進行溝通交流。

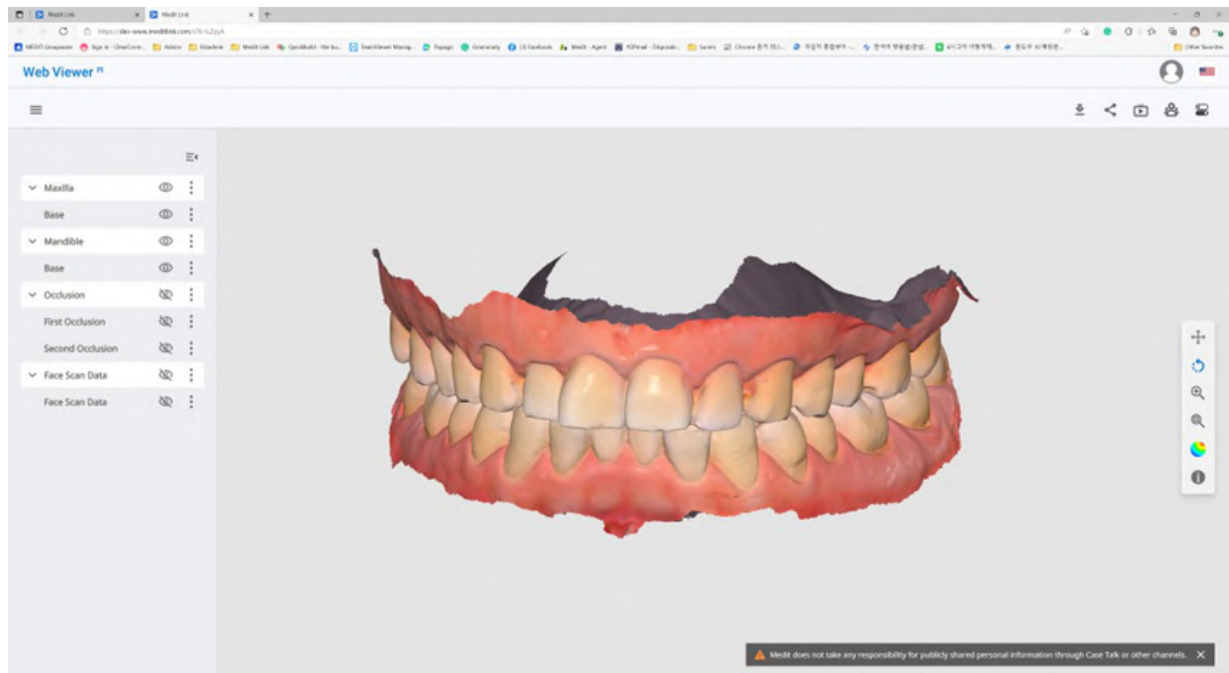

	下載	將本案例中的所有檔案下載到電腦端。
	案例資訊	顯示有關案例的詳細資訊。
	共享	修改共享設定。
	二維碼	可將共享連結複製到剪貼簿。透過複製的連結，可將所共享的檔案在網頁瀏覽器上進行顯示。
	Live	可與所連接的使用者共享您的螢幕。 螢幕共享將與所有連接的使用者實現同步化。
	參與者	顯示連接至共享連結的所有使用者。
	牙齒標籤	修改牙齒標籤系統。


重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Live
- 參與者

注釋

您可以在3D模型的特定位置上添加注釋。擁有該連結的任何人均可查看您添加的注釋。

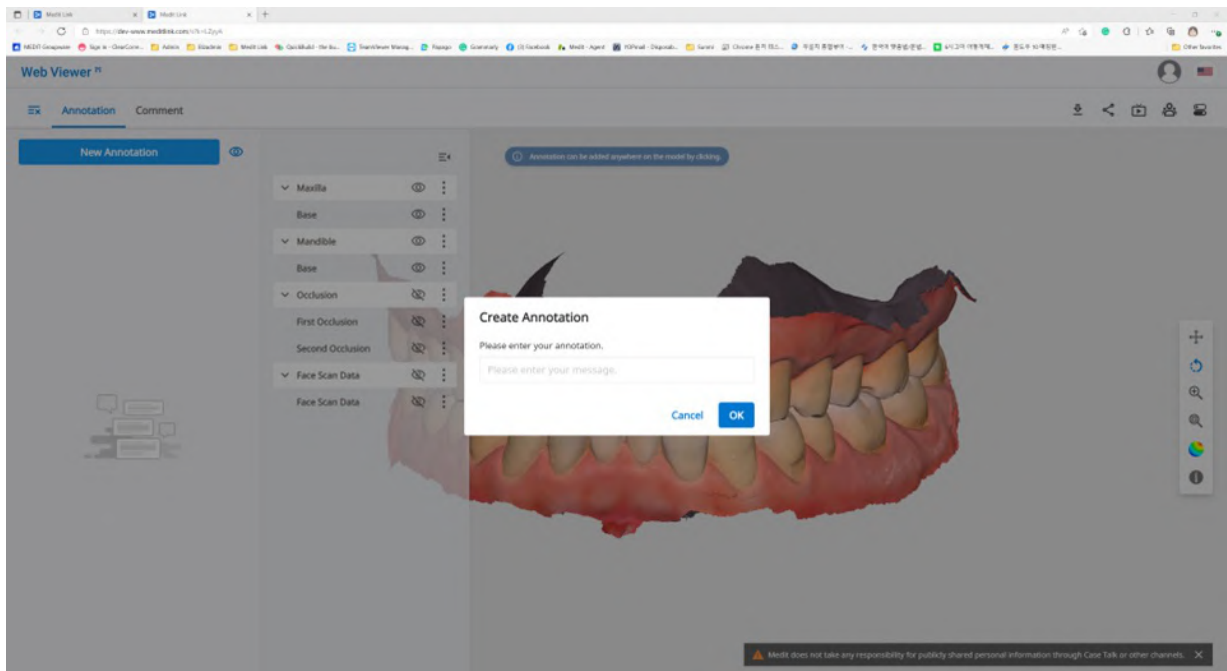

🔍 重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- 注釋

1. 找到左上角的菜單圖示然後選擇「注釋」索引標籤。使用「新注釋」按鈕，在數據的任何地方透過點擊來添加注釋。
2. 輸入注釋內容，然後點擊「確定」來將其保存。

A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. 您可以將注釋作為一個簡單的溝通途徑。
點擊所創建的注釋來輸入回復內容，然後點擊「發送」。

A screenshot of the interface for replying to an annotation. At the top, it shows the user 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below is the annotation title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom is a text input field with placeholder text 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

備註

您可以在「Web Viewer」菜單中通過「留言」索引標籤來與擁有連結的使用者進行溝通交流。

🔍 重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- 備註

即時螢幕共享

可即時共享您的螢幕。

🔍 重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Live

1. 點擊「Live」，與所連接的使用者共享您的Web Viewer螢幕。



2. 點擊「確定」，開始共享您的螢幕。
3. 可訪問連結的其他人須接受螢幕共享。
4. 發起「螢幕共享」的使用者的電腦螢幕將與收到請求的人的電腦螢幕實現同步化。



數據樹

所有數據均將根據數據樹中的屬性來進行分組及顯示。您可以進行顯示或隱藏數據以及調整不透明度等操作。

數據樹控制

顯示/隱藏	點擊「眼睛」圖示來顯示或隱藏視圖中的數據。按照組別或單個檔案來控制數據的可視性。
不透明度	將滑鼠懸停在可見的區域上可看到不透明度的滑動軸。 調整滑動軸，修改數據的透明度。 
擴展菜單	展開菜單會顯示在每個「數據樹」區域的右側。其包含如下選項：  • 僅顯示此項：隱藏除当前数据外的所有数据。 • 隱藏：隱藏當前數據。

3D 模具控制

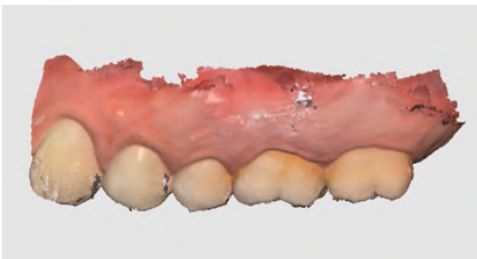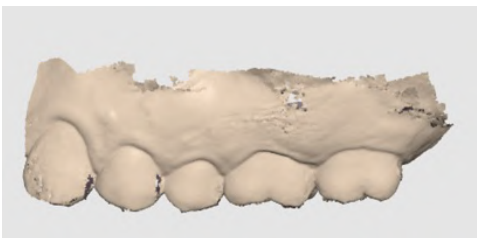	平移	移動模型。
	旋轉	旋轉模型。
	放大/縮小	放大和縮小模型。
	縮放至窗口大小	將模型置於螢幕中央。
	模型顯示 模式	開啟紋理
		關閉紋理
		以真實的紋理顏色來顯示數據。 
		顯示單色數據。 

Partners

您可以搜尋潛在的合作夥伴來請求建立合作關係並查看當前的合作夥伴列表。


重要資訊

使用Google地圖的相關服務不適用於Medit Link China。

搜尋合作夥伴


您可以基於企業名稱及/或地址來搜尋Medit Link使用者。

在搜尋結果中，您可以向您有意願與之合作的企業發送建立合作夥伴關係的請求。

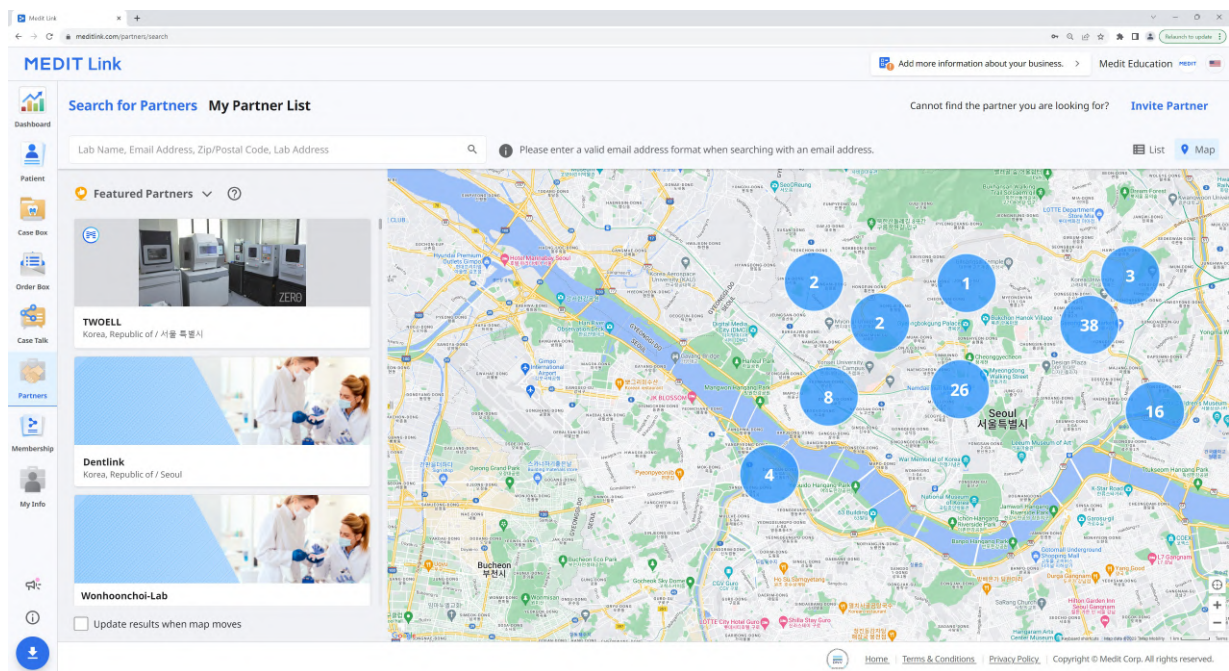

我的合作夥伴列表

您可以在「我的合作夥伴列表」中查看您與所有現有的合作夥伴企業目前所擁有的的合作夥伴關係情況。

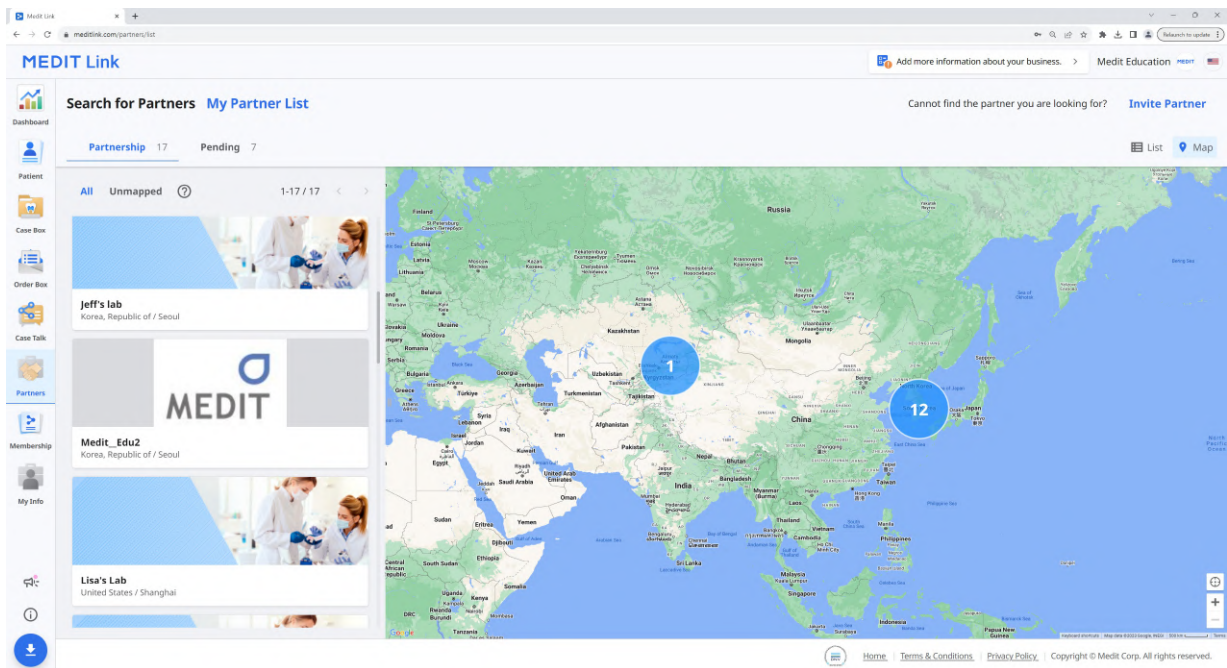

合作夥伴邀請

如您有想要與之合作的診所或技工所，您可以邀請其加入Medit Link。一旦其接受了邀請，合作夥伴關係將自動建立。

1. 點擊螢幕左上角的「邀請合作夥伴」。
2. 輸入您想要與之合作的企業的電子郵箱地址，並向其發送一封帶有合作關係請求的邀請函。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. 一旦被邀請的機構接受了邀請並註冊了Medit Link，合作關係將自動建立。

Membership

會員

The screenshot displays the Medit Link Membership page. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Membership' and includes tabs for 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The 'Plan' section shows the 'Premium' plan at \$0.99 per user per month, with benefits like a paid plan, 10 TB of cloud storage, and a one-month free trial. Below this, 'Premium Benefits' are listed, including 'Sample Coupon 1' (Medit Partner, expires 2023-02-25), 'Sample Coupon 2' (Medit Partner, expires 2023-02-25), '5% Off' (Dental Company, expires 2024-04-27), and 'Sample Boucher' (expires 2024-04-30). A 'Subscribe' button is present. The 'Cloud Storage' section shows a usage of 4.75 GB / 10 TB, with a 'Delete' button and a list of items to be removed: 'Raw Data' (30.51 GB) and 'Result Files & Attachments' (4.72 GB).

計劃

您可以查看每個會員計劃所提供的服務內容，包括折扣券與優惠券以及您當前的訂購狀態。您可以隨時升級您的會員計劃或取消您的訂閱。

This screenshot shows the 'Standard' plan details on the Medit Link Membership page. The 'Plan' section indicates a price of \$0.99 per user per month and lists benefits: a paid plan, 10 TB of cloud storage, efficiency for many cases, and a one-month free trial. The 'Premium Benefits' section includes 'Sample Coupon 1' (Medit Partner, expires 2023-02-25), 'Sample Coupon 2' (Medit Partner, expires 2023-02-25), '5% Off' (Dental Company, expires 2024-04-27), and 'Sample Boucher' (expires 2024-04-30). A 'Subscribe' button is visible. A note at the bottom states: 'The promotion has been applied. You can now use the plan until 2021-10-01. View More. If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. Click.'

Medit Link提供下列會員計劃：

Standard

- 所有已註冊的使用者均可使用的免費標準計畫
- 1GB的雲端存儲空間
- 適用於新的使用者

Premium

- 付費計畫
- 10TB的雲端存儲空間
- 適用於有很多案例和各種數據的使用者
- 1個月的免費試用期

	Standard	Premium
雲端儲存空間	1GB	10TB
每月費用	免費	\$0.99/月


* 雲端儲存空間不包含「原始數據」所佔用的空間。

🔍 重要資訊

上述會員計畫同樣適用於Medit Link China。您可以免費使用Premium會員計畫直至相應功能的正式發佈。

雲端儲存空間

您可以在右側區域中管理您的雲端存儲空間。

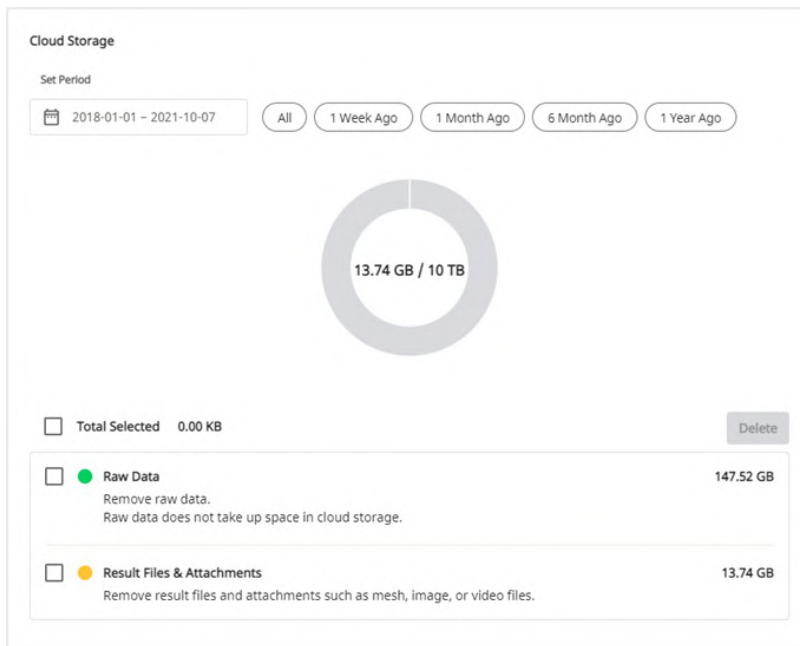


設定時段	設定特定的期間，用於刪除在該時間範圍內所創建的數據。 • 所有：查看所有檔案。 • 1周前：查看創建後1周內的檔案。 • 1個月前：查看創建後1個月內的檔案。 • 6個月前：查看創建後6個月內的檔案。 • 1年前：查看創建後1年內的檔案。
原始數據	由於原始數據不佔用雲端存儲空間，因而其不會出現在餅狀圖中。但是您可以根據需要在這裡管理原始數據，如將其刪除以保護患者的隱私資訊。
結果& 附件	結果檔案及附件將佔用雲端存儲空間。如雲存儲空間已滿，您可以通過清理多餘檔案來釋放更多的存儲空間。
刪除	可通過清理在雲存儲空間中所選擇的檔案來釋放存儲空間。

訂閱


如果您目前使用的是Standard計畫或透過兌換碼兌換的Premium計畫，您均可以訂閱Premium計畫。

付款將透過Stripe服務來完成 (www.stripe.com)。

1. 前往「會員」>「計劃」>「Premium」，點擊「訂閱」按鈕。

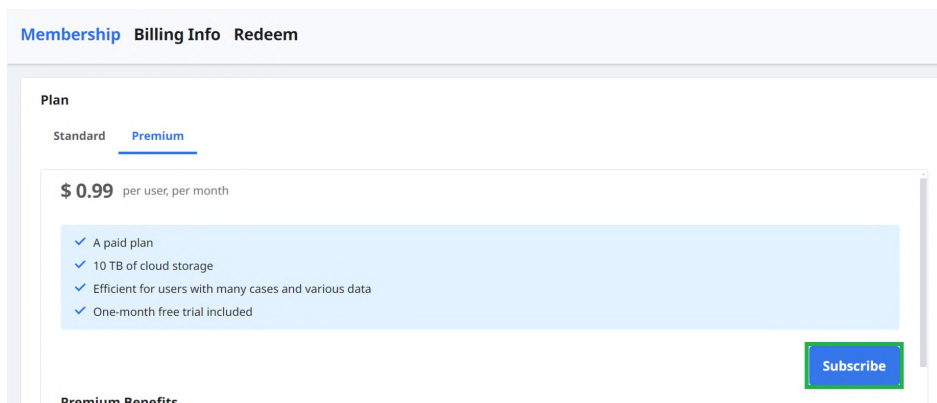

2. 查看「Premium」會員計畫的說明，然後再次點擊「訂閱」。

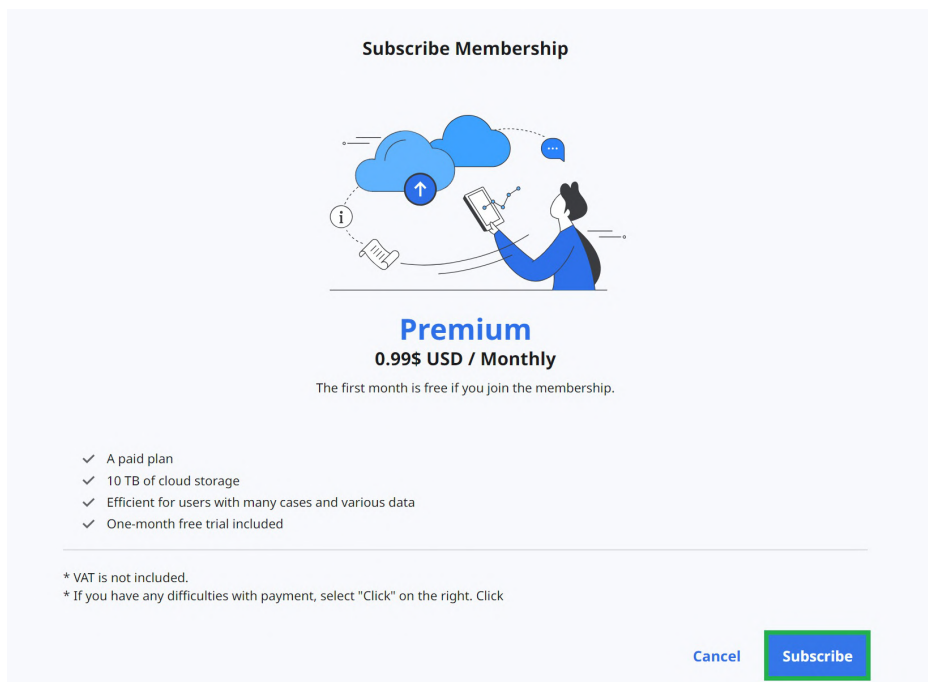

3. 查看價格及相關條件，然後輸入付款所需的資訊。隨後，點擊「訂閱」。

← MEDIT Link

TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic

Medit Link Membership

Billed daily

Subtotal

\$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription

- \$0.99

100% off for a day

Total due today

\$0.00

Powered by stripe

Terms

Privacy

Pay with link ⇒

Or pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea


☐ Securely save my information for 1-click checkout

Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.


4. 付款會持續幾秒鐘。付款完成後，您將看到確認訊息。

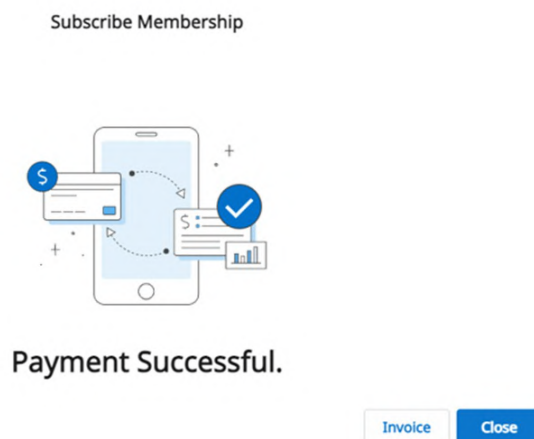

取消訂閱

您可以隨時取消訂閱您的會員計畫。取消訂閱後，您依舊可以在剩餘的已付費月內使用「Premium」會員計畫。從下一個付款日開始，您的會員計畫將隨即變為「標準」，而雲端存儲空間的限額也將變回1GB。如超過雲端儲存空間容量，將無法對檔案進行備份，同時也不能使用訂購及共享功能。

1. 點擊「取消訂閱」。
2. 點擊「取消訂閱」。

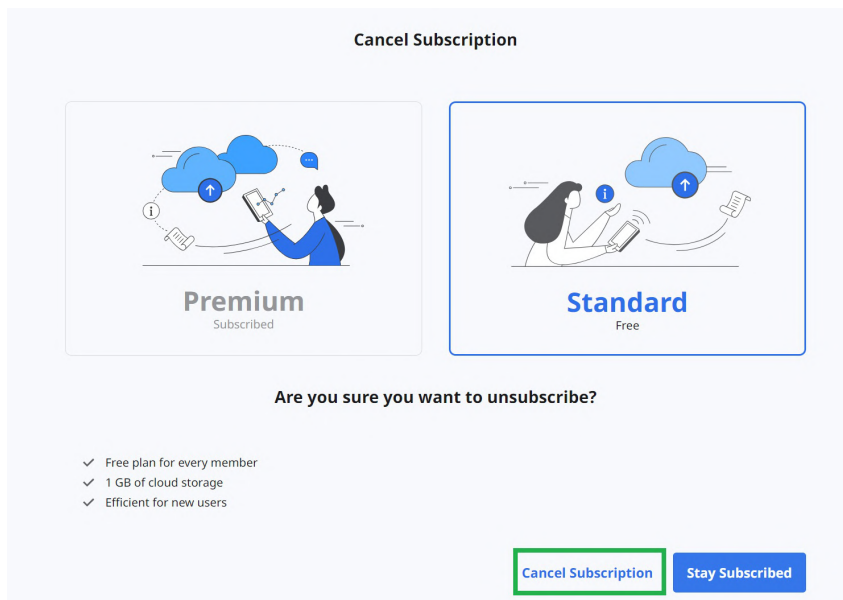


3. 要確認您想要取消訂閱，請在彈出視窗中再次點擊「取消訂閱」。

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10


[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

4. 您的訂閱將被取消。
5. 從下一個付款日開始，您的會員計畫將隨即變為「標準」，而雲端存儲空間的限額也將變回1GB。如超過雲端儲存空間容量，將無法對檔案進行備份，同時也不能使用訂購及共享功能。

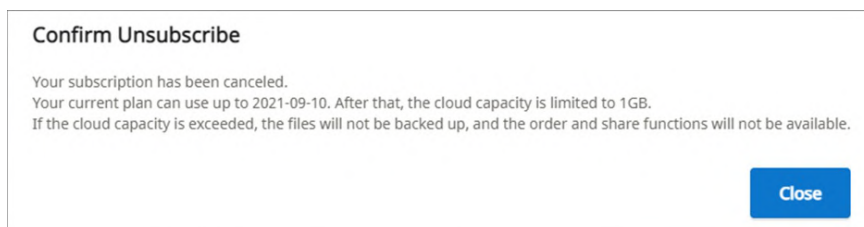

帳單資訊

您可以在這裡查看會員計畫訂閱的付款歷史記錄，如每次付款的發票。您還可以添加或修改付款方式，其將從下一次付款時開始生效。

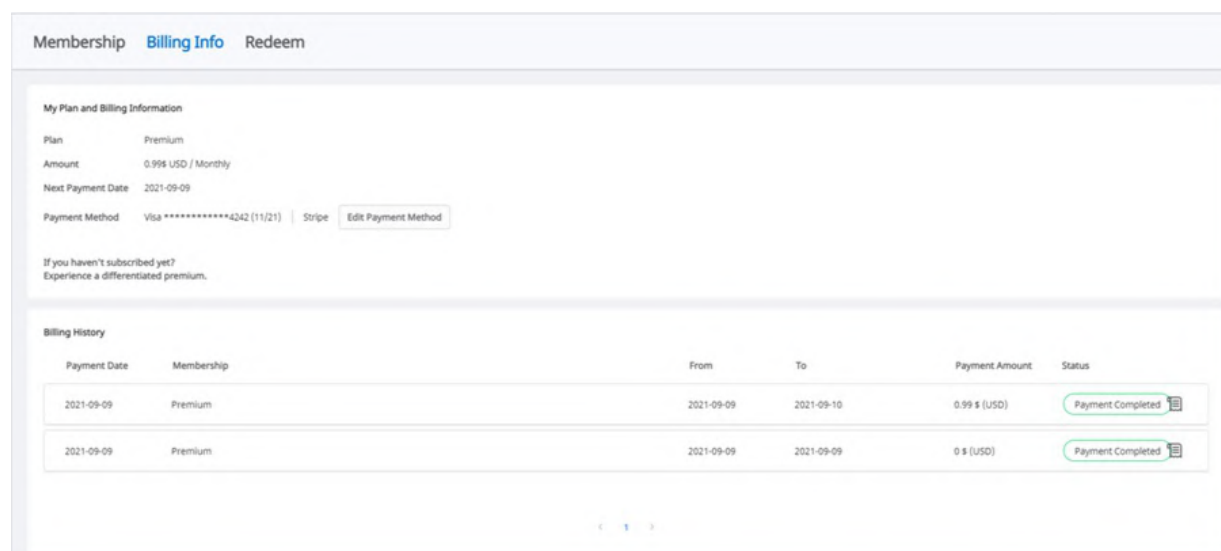

如何添加付款方式

1. 點擊「編輯付款方式」。

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

Plan Premium

Amount 0.99 USD / Monthly

Next Payment Date 2021-09-09

Payment Method Visa **** *4342 (11/21) | Stripe **Edit Payment Method**

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. 點擊「添加付款方式」。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. 輸入所需的資訊，然後點擊「添加」。

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. 新添加的付款方式將被設為預設方式並在下一次付款時生效。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Expires 11/2021



+ Add payment method

如何修改付款方式

1. 在賬單對話方塊視窗中點擊您想修改的付款方式旁邊的展開菜單圖示。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Expires 11/2021



+ Add payment method

2. 點擊「設為預設」來將所選擇的銀行卡設置為預設付款方式。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

兌換

註冊促銷活動中所提供的兌換碼。您可以憑藉兌換碼來使用「Premium」會員計畫。

註冊兌換碼

1. 輸入兌換碼，然後點擊「註冊」。

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30 Wonhoon-TestRedeem		Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

1

Home Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. 閱讀通知並在彈出的對話方塊中選擇「註冊」或「應用」。
 - 註冊：註冊兌換碼。您可以在註冊後激活並使用兌換碼。
 - 應用：註冊並激活兌換碼。促銷折扣將立即生效。

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

激活兌換碼

您可以註冊多個兌換碼，但是您需要激活您想使用的兌換碼。

1. 點擊您想使用的兌換碼旁邊的「激活」按鈕。
 - 如當前沒有兌換碼處於「Activated」狀態，則您選擇的兌換碼將立即得到應用。
 - 如當前已存在已激活的兌換碼，則新選擇的兌換碼將變為「Waiting」狀態。在當前已激活的兌換碼過期時，處於「Waiting」狀態的新兌換碼將自動被激活。


重要資訊

僅有一個兌換碼能被激活，且僅有一個兌換碼可處於「Waiting」的狀態。

My Info

我的帳戶

您可以查看並編輯您在註冊時所輸入的資訊並查看您的會員狀態。

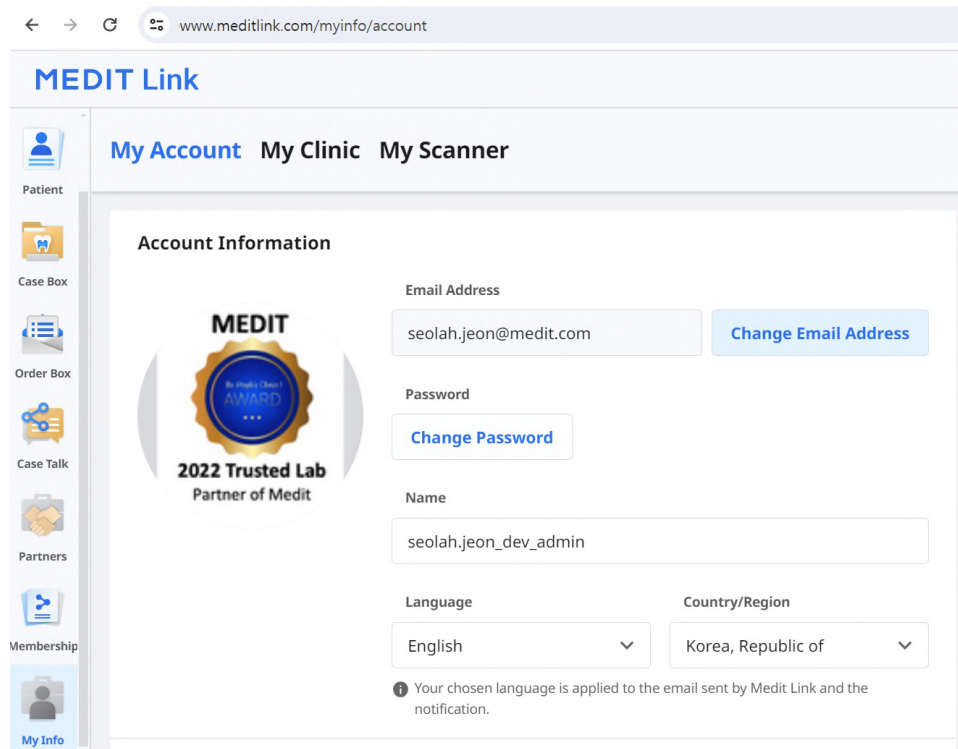

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled "Account Information" and features a MEDIT logo with a "2022 Trusted Lab Partner of Medit" badge. The account details are as follows:

Field	Value	Action
Email Address	seolah.jeon@medit.com	Change Email Address
Password		Change Password
Name	seolah.jeon_dev_admin	
Language	English	
Country/Region	Korea, Republic of	

ⓘ Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

我的診所/我的技工所(僅管理員帳戶)

您可以檢查並編輯診所或技工所的相關資訊。該部分僅適用於管理員帳戶。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

我的掃描儀

您可以查看帳戶的連接裝置資訊。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Add more information about your business.

seolah.jeon

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

其他菜單

通知 & 更新

您可在此處查看Medit的重要通知及Medit軟體的程式更新。

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

相關網站

您可獲取有關使用Medit Link的各種資訊。訪問Medit的教育及資訊資源，如Medit Academy、Medit Academy YouTube及Medit幫助中心。

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

下載Medit Link應用程式


您可以從網頁端下載程式安裝程式的最新版本。該菜單適用於在您丟失了產品包裝中所提供的安裝程式或您的安裝程式過期的情況。

 重要資訊

Medit Link可在您有網路連接的情況下自動進行更新。

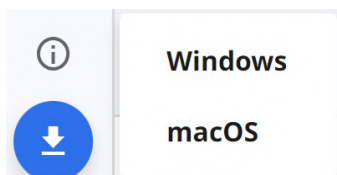

概覽

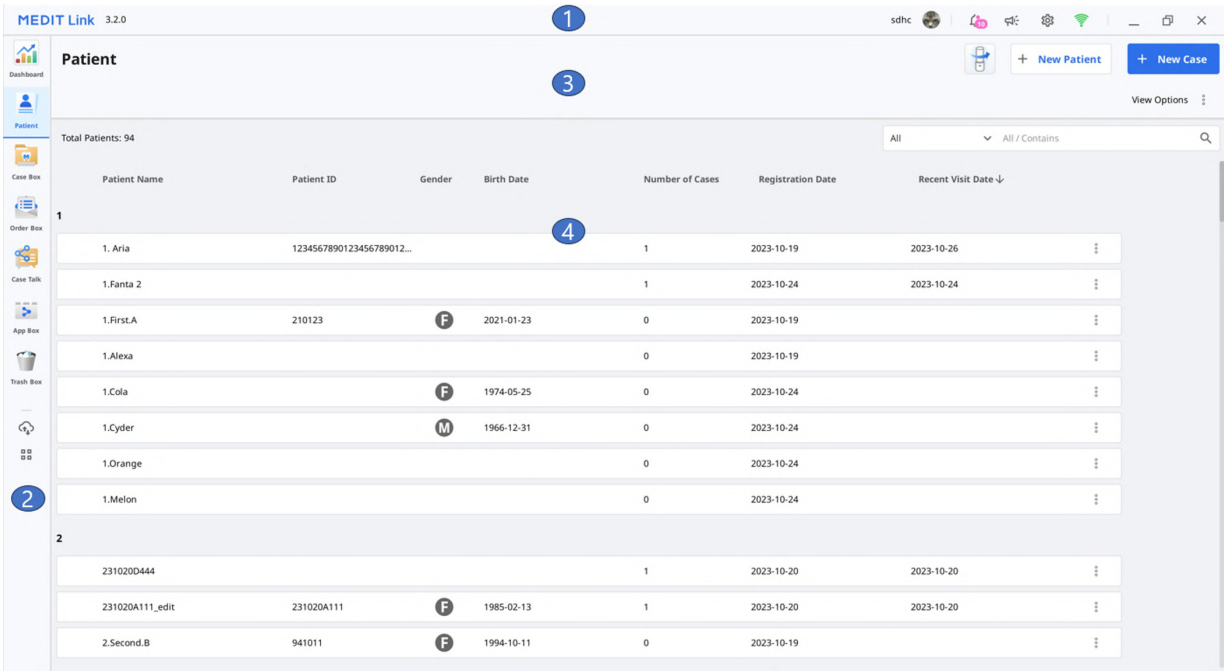

1	標題欄	請參閱「 Medit Link應用程式 」>「 標題欄 」，瞭解詳細資訊。
2	菜單	請參閱「 Medit Link應用程式 」>「 菜單 」，瞭解詳細資訊。
3	工具及功能	請參閱「 Medit Link應用程式 」>「 檔案檢視器 」及「 Medit Link應用程式 」>「 檢視選項 」，瞭解詳細資訊。
4	案例列表	請參閱「 Medit Link應用程式 」>「 篩選和搜尋 」，瞭解詳細資訊。

下表概述了每種類型的診所及技工所帳戶可使用的菜單。

帳戶類型		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
診所帳戶	管理員	O	O	O	X	X	O	O	O
	會員	O	O	O	X	X	O	O * 僅還原功能	O
技工所帳戶	管理員	X	X	X	O	O	O	O	O
	成員	X	X	X	O	O	O	O * 僅還原功能	O

標題欄

標題欄可讓您快速訪問諸如帳戶資訊、公告、通知和更新、設定及網路狀態等功能。



我的資訊

我的資訊包含像簡介影像、診所或技工所名稱、電子郵箱以及使用者名稱等使用者基本資訊。

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

通知

可以查看與合作夥伴、訂單和工作流程相關的通知。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | 勾選該處便可僅顯示未閱讀的訊息。 |
| 2 | 點擊任意通知即可立即前往相關的案例或網頁。 |

通知和更新

您可在此處查看Medit的重要通知及Medit軟體的程式更新。

設定

「設定」對話方塊可讓使用者配置程式。

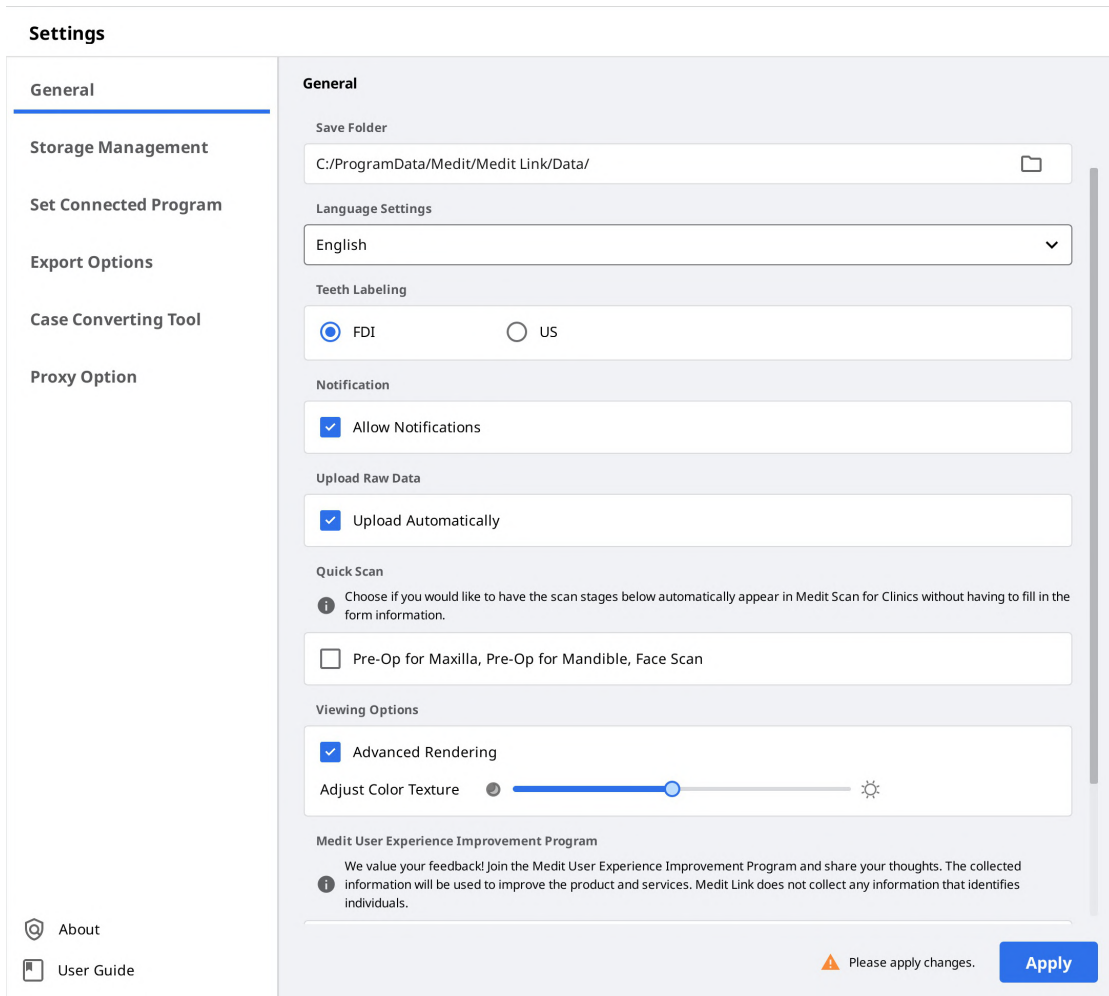


請參閱「[Medit Link應用程式](#)」>「[設定](#)」，瞭解「設定」選項的詳細資訊。

網路狀態

Medit Link可使您在連接到網路時無縫使用所有功能。

為幫助您即時檢查網路連接的狀態，「網路狀態」圖示將顯示在標題欄上。

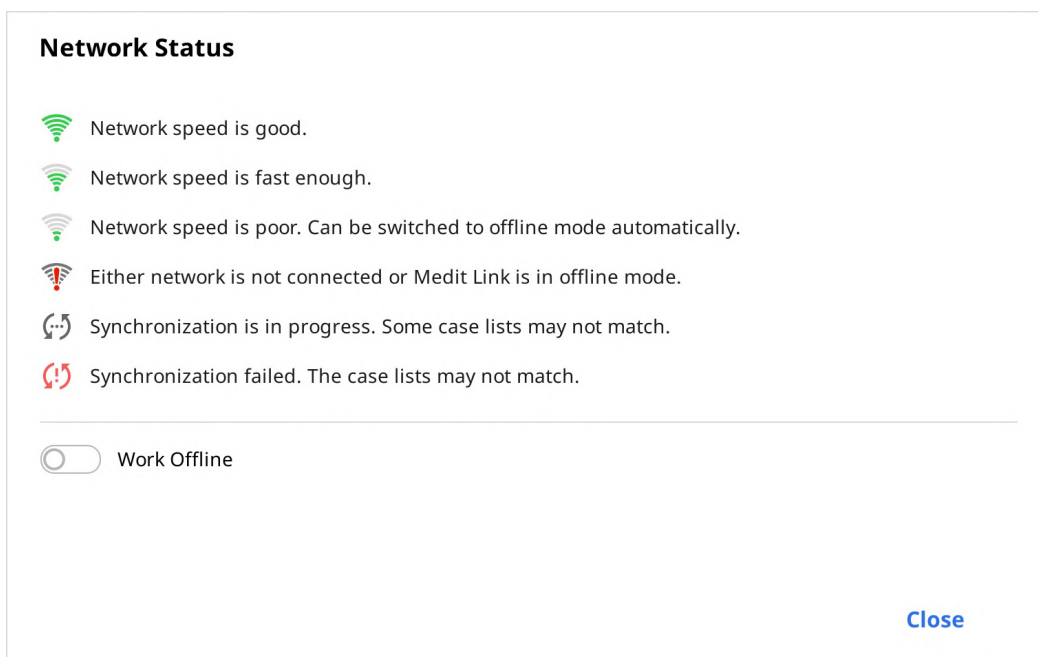

如網路連接狀態不良，則您可能會遭遇如下限制：

- 某些功能將受到限制，如「訂購案例」、「創建案例」、「通過Case Talk共享」及「雲端同步」等。
- 由於網路環境的影響，服務的總體性能會出現下降。

在這種情況下，您可以先進入離線模式來進行某些基礎操作。隨後，在網路連接正常後，再使用其他需要網路的功能。

重要資訊

網路標識表示當前區域與亞馬遜網路服務(AWS)之間的回應速度。其並不代表您的網速。也就是說，某些時候即使您的網速非常快，但其所顯示的狀態卻可能是不良或較差。

如其它進程使用了同一個網路，那麼網速也可能顯示不良或較差並且Medit Link的總體性能也會變差。在這種情況下，請切勿與其他程式共用同一個網路。

例如，「上上傳原始數據」功能便往往要佔據很大部分的網路進程。如此時標識顯示網路狀態不良或較差，請前往「設置」>「上傳原始數據」，然後關閉「自動上傳」選項。

設定

常規

提供用於整體系統設定的選項。

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains the following options: General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main content area displays the following settings:


- Save Folder:** C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/
- Apps Installation Folder:** C:/Program Files/Medit/
- Language Settings:** English
- Teeth Labeling:** FDI (selected), US (unselected)
- Notification:** Allow Notifications (checked)

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area. A 'Close' button is located at the bottom right of the window frame.

保存資料夾	指定要存儲在Medit Link及所連接的程式中所生成結果的資料夾。	
應用程式安裝資料夾	可為App Box中的Medit Apps以及Partner Apps指定安裝路徑。	
語言設定	選擇程式的語言。	
牙齒標籤	在FDI與US之間選擇牙齒標籤系統。	
通知	在勾選該選項時，您將會接收有關程式更新的相關通知。	
上傳原始數據	當您勾選該選項時，原始資料將被自動上傳至雲端。 該選項有助於您在另一台電腦上通過相同的帳戶使用Medit Link時備份原始數據並進行無縫式的掃描。 原始數據的雲備份僅適用於在Medit Scan for Clinics中所獲取的數據。	
快速掃描	選擇是否希望以下掃描階段自動顯示在Medit scan for Clinics中，無需填寫表單資訊。 • 上顎術前 • 下顎術前 • 面部掃描	
檢視選項	高級渲染	在勾選該選項時，程式將以更加生動逼真的渲染效果來顯示3D模型。
	調整顏色紋理	調整3D模型的亮度。 * 當您通過其他軟體打開相同的資料時，其結果的顏色可能會與Medit Link中的顏色有些許出入。
Medit使用者體驗改善計畫	加入「Medit使用者體驗改善計畫」。 • 我們收集資訊的目的在於對不斷提升我們的產品及服務。 • 我們不收集任何識別個人身份的資訊。	
登錄後預設頁面	選擇在啟動程式時要顯示的預設菜單。 • 診所帳戶可在「Patient」與「Case Box」之間進行選擇。 • 技工所帳戶可在「In Box」與「Work Box」之間進行選擇。	

存儲管理

查看並管理本地及雲存儲空間。

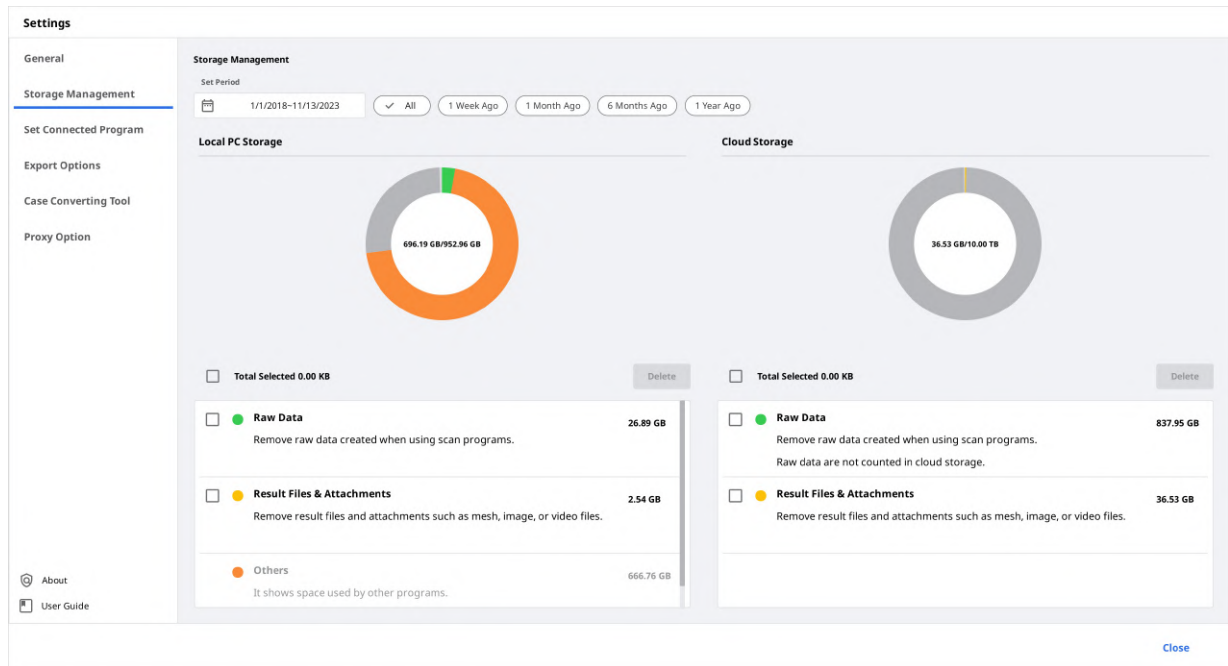

設定時段

設定特定的期間，用於刪除在以下時間範圍內所創建的数据。

- 所有: 查看所有檔案。
- 1周前: 查看創建後1周內的檔案。
- 1個月前: 查看創建後1個月內的檔案。
- 6個月前: 查看創建後6個月內的檔案。
- 1年前: 查看創建後1年內的檔案。

本機存儲空間

管理電腦端的存儲空間。

原始數據	從電腦端移除原始數據。 如這些原始數據已被上傳至雲端，您便可以隨時下載並使用。
結果& 附件	從電腦端刪除結果檔及附件，如網格、影像及影片。 如這些檔案已被上傳至雲端，您便可以隨時下載並使用。
其他	查看用來運行系統及其他程式的檔案。顯示您電腦端的存儲空間。您無法直接從Medit Link中移除這些檔案。
刪除	從電腦端刪除所選擇的檔案。


雲端儲存空間

管理雲存儲空間。

原始數據	由於原始數據不佔用雲端存儲空間，因而其不會出現在餅狀圖中。但是您可以根據需要在這裡管理原始數據，如將其刪除以保護患者的隱私資訊等。
結果& 附件	結果檔案及附件將佔用雲存儲空間。如雲存儲空間已滿，您可以通過清理多餘檔案來釋放更多的存儲空間。
購買存儲空間	如您正在使用Standard會員計畫，您可通過訂購Premium會員計畫來展開您的雲存儲空間。
刪除	可通過清理在雲存儲空間中所選擇的檔案來釋放存儲空間。

設定連接的程式

管理支援在Medit Link中集成的程式。

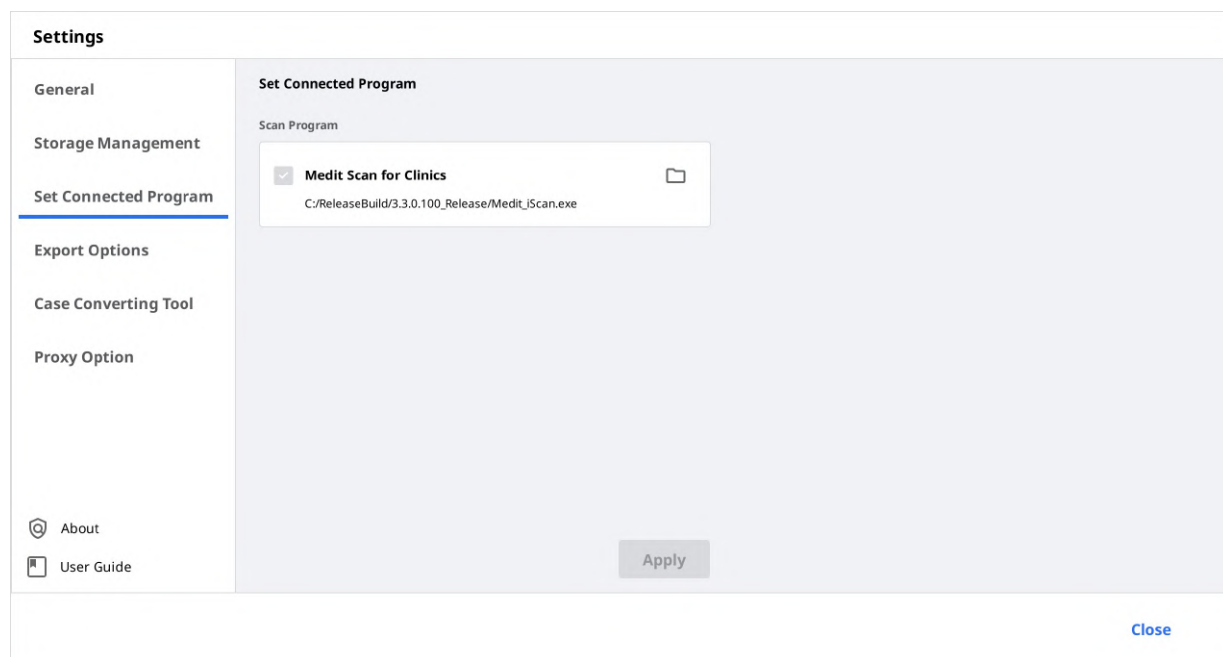

您可以連接如下程序：

	診所帳戶	技工所帳戶
掃描程式	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

🔍 重要資訊

下列服務的集成不可用於Mac的Medit Link中。

- [Medit Scan for Labs](#)

匯出選項

設置從Medit Link匯出檔案的方式。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:/YHGarn_Test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

CAD類型	選擇您想用於設計的CAD程式。 程式將基於您的選擇來調整結果，進而使您在無需對齊軸的情況下進行設計。
匯出檔案至	指定您想要存儲結果的路徑。
網格格式	指定最終網格檔案的格式。
影像格式	指定匯出影像檔案的格式。
壓縮 & 合併	壓縮檔案：將所有結果壓縮到一份檔案中。 組合單個網格：將上顎或下顎的所有結果合併在一份檔案中。當使用某些不能匯入及操作多份檔案的程式時，您可以將其合併為一份檔案，以便在這些程式上進行操作。
相同資料夾或檔案已存在時的選項。	可在目標路徑中存在相同的資料夾或檔案名稱時選擇案例的默認操作。 - 匯出時始終詢問。 - 匯出新檔案並覆蓋現有檔案。當前存儲的檔案將被丟棄。 - 創建一個資料夾並匯出檔案
資料夾名稱規則	定義在匯出檔案時創建資料夾名稱的規則。 設定的規則將被應用到資料夾命名中，匯出的文件將被保存在所創建的資料夾中。 使用下方資訊來設定規則。 - 診所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、患者ID、訂單ID - 技工所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、訂單ID
檔案名稱規則	定義匯出檔案的名稱規則。 使用下方資訊來設定規則。 - 診所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、患者ID、訂單ID - 技工所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、訂單ID

案例轉換工具

61

您可以將案例在不同的帳戶間移動，即通過匯出當前帳戶的現有案例或匯入從其他帳戶匯出的案例。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

匯出案例

可將當前登錄帳戶中的案例匯出至本地電腦端。

1. 打開Medit Link並點擊「設定」圖示。

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Settings

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

New Patient

New Case

View Options

2. 選擇左側菜單的「案例轉換工具」區域。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:\Users\김영하\Desktop

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:\ReleaseBuild\CaseBox_2023-7-5_171632_series.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

- 在「匯出」部分，可根據需要設定期間或直接搜尋要匯出的案例。

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name
☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

- 從「要匯出的檔案」中的列表選擇您要匯出的案例。

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

- 在「檔案名」欄位中編輯案例名稱，設定檔案名。
- 設定用於匯出所選案例的目標資料夾。
- 點擊「匯出」。
- 點擊「是」即可打開匯出檔案所在的資料夾。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


- 匯出的案例將保存為.meditex檔案格式。

匯入案例


- 打開Medit Link並點擊「設定」圖示。

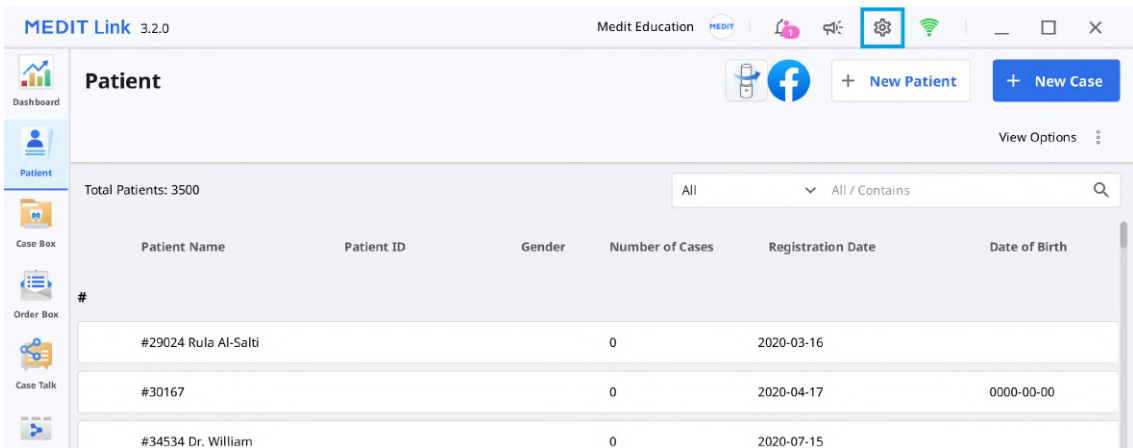


- 選擇左側菜單的「案例轉換工具」區域。

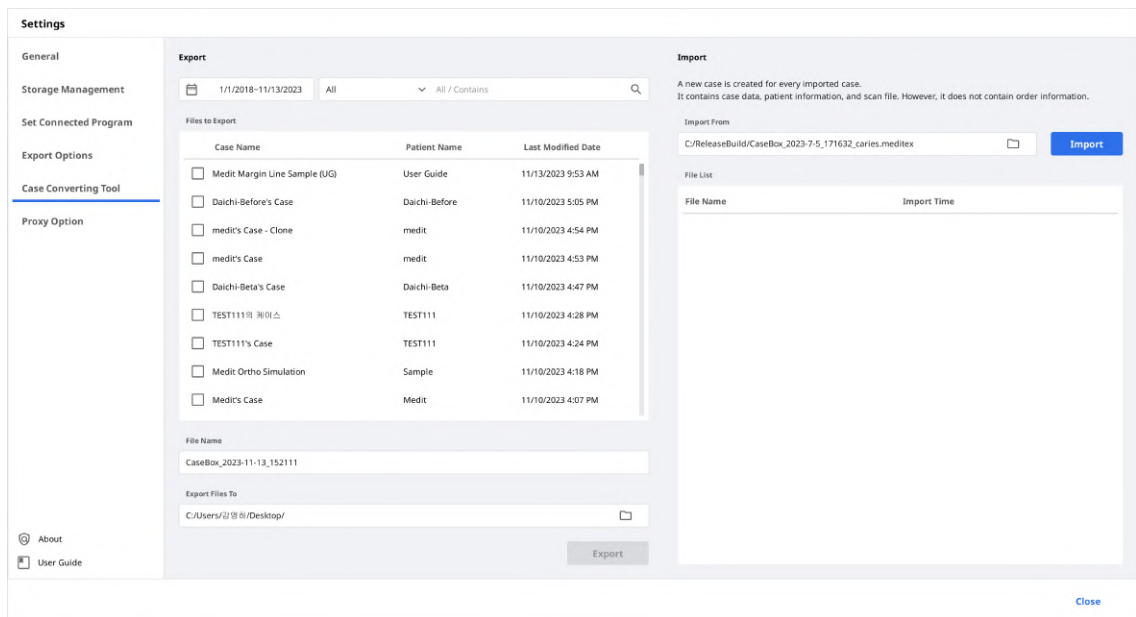

- 在「匯入」部分，點擊資料夾圖示來瀏覽您的電腦，以便找到您想匯入的.meditex檔案。

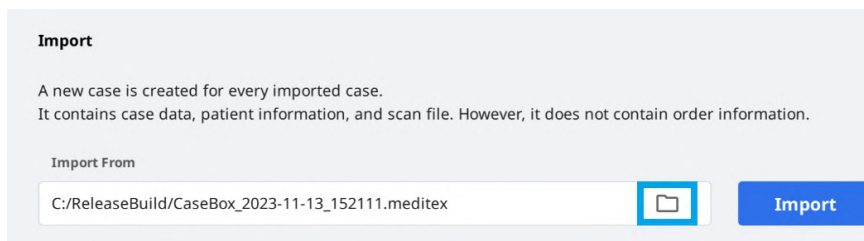

- 點擊「匯入」圖示並在下方的檔案列表中查看要匯入的檔案。

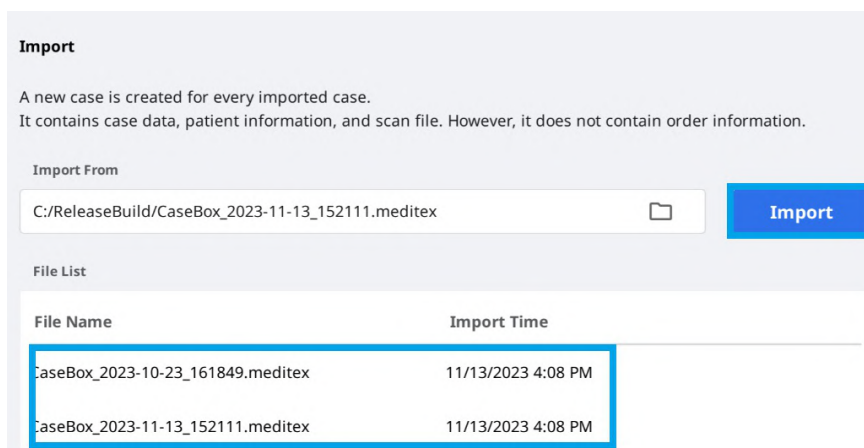

- 所匯入的案例也將出現在您的Case Box(診所帳戶)或Work Box(技工所帳戶)中。

Proxy選項

在某些網路受限的環境中，您可以更改網路設定。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

關於

顯示有關Medit Link的詳細資訊。

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



Close

使用者指南


獲取Medit Link的使用者指南。

須連接網路才可打開使用者指南。

菜單

Dashboard

您可以通過視覺化的圖表（Medit Link應用程式及網頁端均可）來瞭解您在Medit Link所完成的全部工作的統計數據。

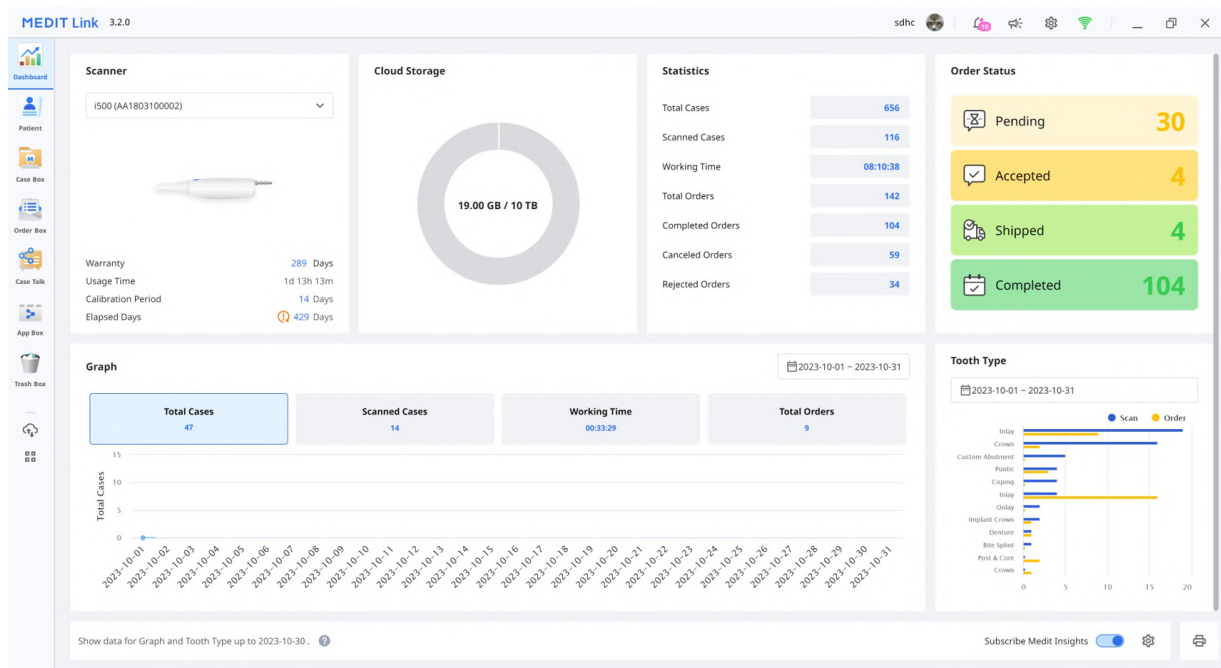

重要資訊

請參閱「[Medit Link網頁端](#)」>「[Dashboard](#)」，瞭解有關「Dashboard」及「Medit Insights」的更多資訊。

Patient

您可以在「Patient」菜單中添加、編輯、刪除或合併患者。

Patient

Total Patients: 106

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
KELLY				1	2021-07-02	Scan
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
newpatient				1	2022-10-13	Scan
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan

添加新的合作夥伴

1. 點擊「新患者」。

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. 在「新患者」對話方塊中輸入所需的資訊，然後點擊「保存」。

刪除患者

🔑 重要資訊

僅可在患者沒有案例的情況下才可刪除該患者。

1. 從列表中選擇您要刪除的患者。

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

Patient

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All / Contains

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.O.P	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. 單擊「刪除」。

合併患者

您可將多位患者的所有案例合併到一位患者名下。

1. 从列表中选择您想合并的患者。

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

Patient

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All / Contains

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.O.P	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. 單擊「合併患者」。
3. 選擇您想將所有案例合併到其名下的目標患者。
4. 所有案例均將被合併到目標患者中，目標患者的患者資訊將保持不變。

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. 點擊「應用」即可進行合併。

Case Box/Work Box

1 顯示案例名稱及患者姓名。

2 提供可用的關鍵功能：「掃描」或「打開」按鈕、「訂單」按鈕、應用程式圖示。

3 顯示可用索引標籤：表單、檔案檢視器。

4 顯示管理案例及檔案的功能。

5 顯示所選掃描程式的表單註冊UI。

6 提供類型/方法/材料/牙色資訊以供使用者為其所選的牙齒編號進行選擇。

7 顯示應用於所選牙齒的類型/方法/材料/牙色資訊。

- 1 顯示案例名稱及患者姓名。
- 2 提供可用的關鍵功能：「掃描」或「打開」按鈕、「訂單」按鈕、應用程式圖示。
- 3 顯示可用索引標籤：表單、檔案檢視器。
- 4 顯示管理案例及檔案的功能。
- 5 顯示所選掃描程式的表單註冊UI。
- 6 提供類型/方法/材料/牙色資訊以供使用者為其所選的牙齒編號進行選擇。
- 7 顯示應用於所選牙齒的類型/方法/材料/牙色資訊。

Case Box/Work Box中的索引標籤


表單	檔案檢視器
表單索引標籤可在您為掃描工作輸入諸如類型、方法、材料及掃描選項等基本資訊時提供UI。您所輸入的資訊將被傳送至掃描程式中並可在與您的合作夥伴下訂單時用作訂單資訊。	可查看通過掃描程式及CAD所生成的結果檔案。檔案檢視器可有效地顯示及管理已獲取或附加的3D模型及2D影像

Case Box/Work Box中的功能

Case Box/Work Box中提供以下功能。

	案例狀態	顯示案例的狀態。								
	轉至 Order Box/In Box	可在另一個Box中為同一案例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box)。								
	案例資訊	檢查案例詳細資訊並將其保存為PDF或進行列印。								
	備註&標籤	在註冊或訂購案例時添加備註或索引標籤。使用該功能來與您的合作夥伴溝通有關案例的任何附加或補充資訊。								
	案例記錄	提供有關案例記錄的詳細資訊。 History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	刪除	刪除案例。 您無法刪除已訂購的案例或在離線時所創建案例。								
	複製	在Case Box中為當前的案例創建一個複製體。所有數據均將被複製到已複製的案例中。該功能有助於為同一位患者複製治療資訊或使用相同的資訊或檔案來進行追加訂購。								
	附加	附加各種格式的檔案。								
	匯出	將掃描或CAD結果檔案匯出到本地電腦。您可以在匯出檔案時選擇您想要的檔案格式。 匯出的檔案可在CAD及CAM軟體中繼續用於進行後續操作。								
	共享	創建共享連結。 擁有共享連結的使用者可在無需安裝附加程式的情況下通過諸如Chrome、Firefox或Safari等瀏覽器來訪問3D數據。 您可以隨意與任何人共享連結或僅與特定的人共享連結 可以設定PIN碼或連結到期日期，確保私人資訊的安全。								
	提交支援請求	轉至Medit幫助中心頁面，提交支援請求。								

Order Box/In Box

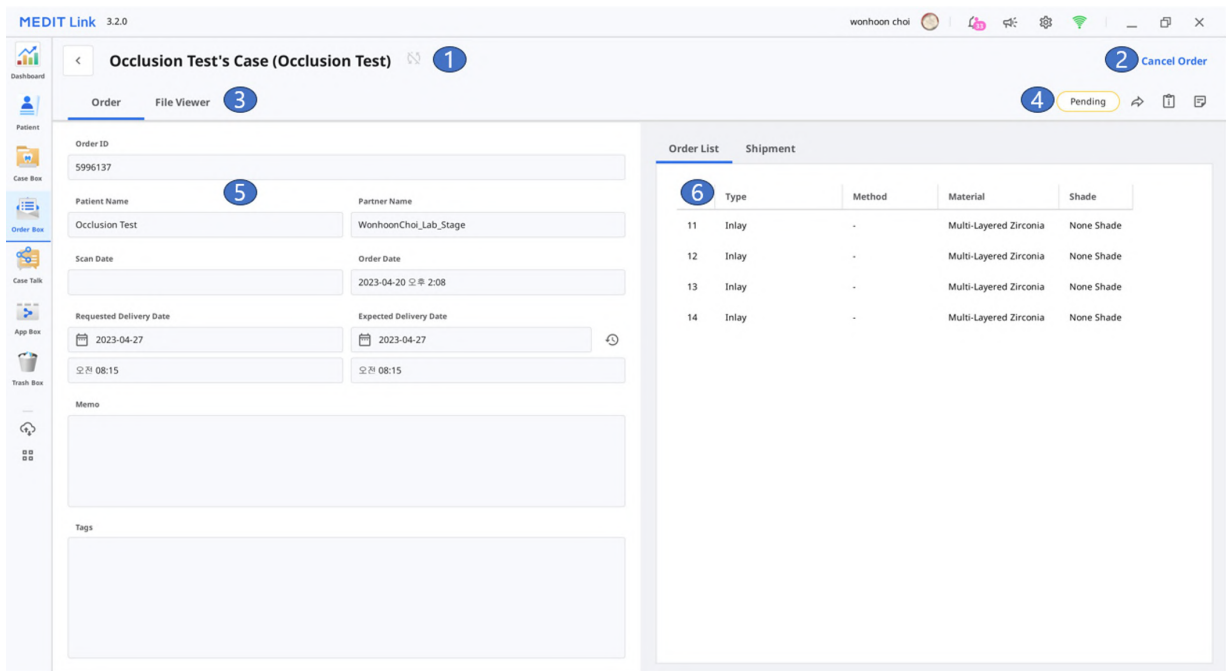

1	顯示案例名稱及患者姓名。
2	提供進行訂單管理的相關功能(接受/取消; 交付/接收)。
3	顯示可用索引標籤: 訂單和檔案檢視器。
4	顯示管理案例及檔案的功能: 案例狀態、詳細資訊的快速鍵、案例資訊、備註& 標籤等。
5	顯示包括訂單號、患者姓名、合作夥伴名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備註& 標籤等訂單的詳細資訊。
6	顯示已訂購產品的資訊及交付狀態。

Order Box/In Box中索引標籤

訂單	檔案檢視器
查看諸如訂單號、患者姓名、帳戶名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備忘錄及索引標籤等與訂單有關的詳細資訊。	查看掃描/CAD操作所生成的檔案。 檔案檢視器顯示並管理程式所獲取或附加的3D模型及2D影像。


Case Talk

在Medit Link所创建的案例可與特定的人共享, 如任何擁有共享連結的人或Medit Link的註冊會員。

使用者可以在Medit Link應用程式和Medit Link網頁端通過「Case Talk」查看所有共享案例的列表。

🔍 重要資訊


「Case Talk」服務需在聯網的情況下才可使用。

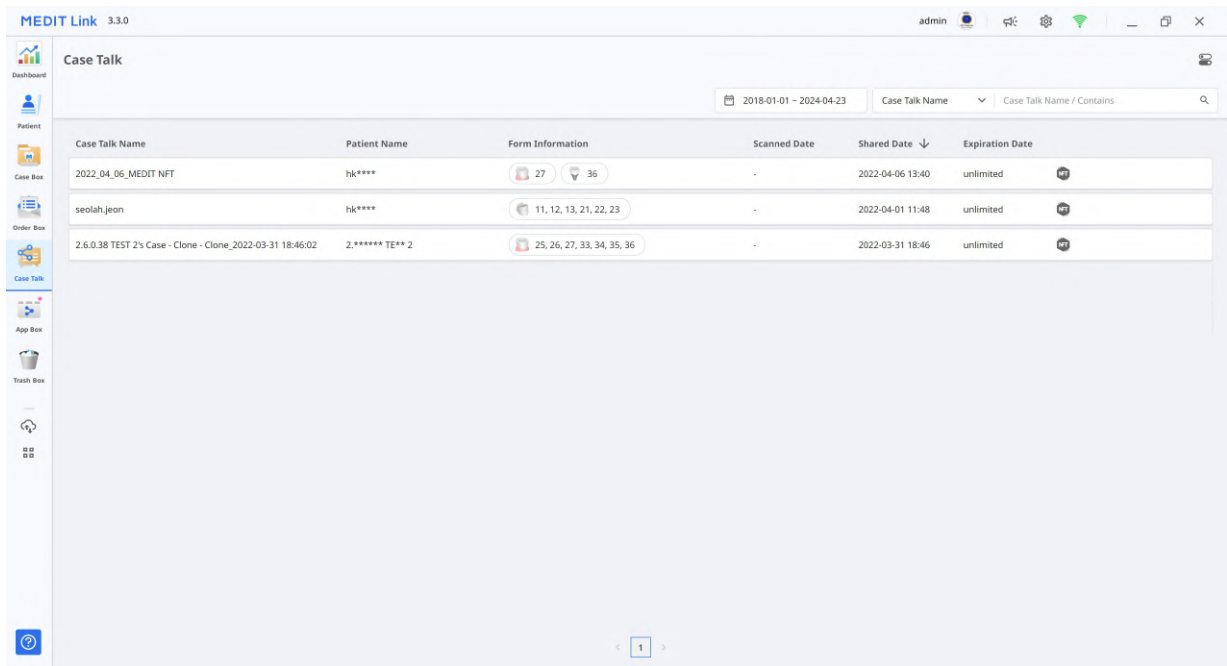

可以在無需安裝單獨程式的情況下通過Web Viewer查看所共享的案例，輕鬆地在各種設備上針對3D資料進行交流。

App Box

App Box提供能為您的基礎掃描工作流程予以補充並提升作業效率的各式附加程式。您可下載並安裝所提供的應用程式來創建牙科用品、分析掃描數據、協助您進行諮詢問診或精簡您的工作流程。

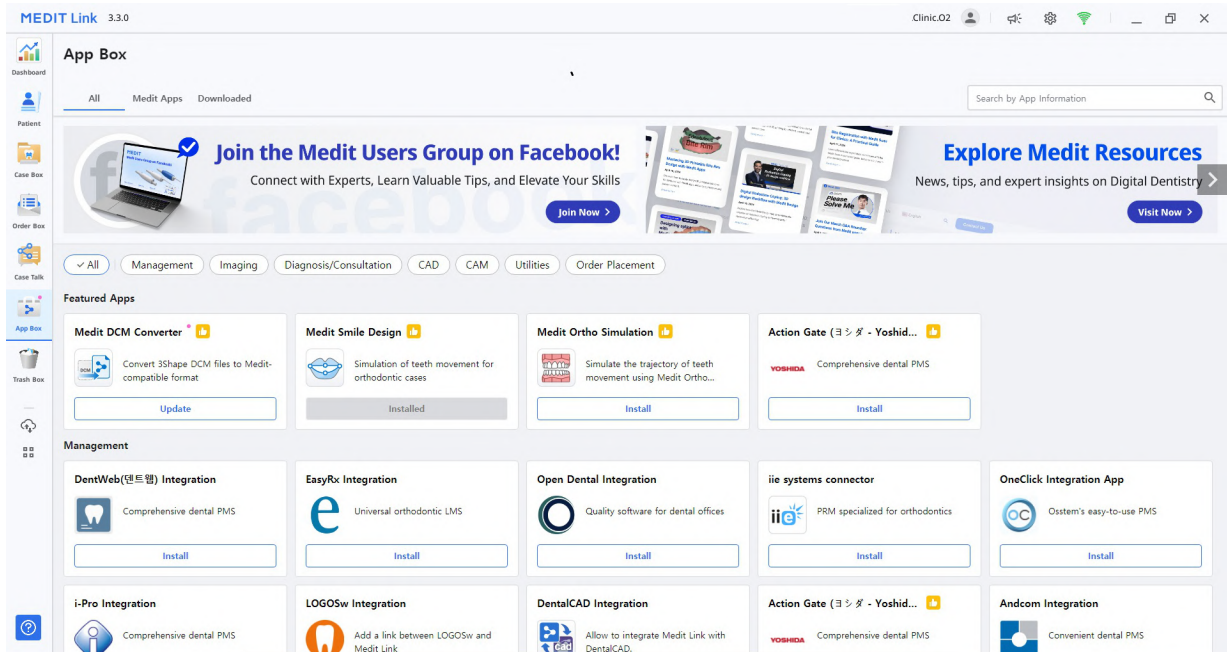

所有


「所有」索引標籤可顯示所提供的全部應用程式的列表，包括Medit開發的原創應用程式（Medit Apps）以及「Partner Apps」——Medit與來自數位化牙科不同領域的合作夥伴整合的應用程式，如3D列印、CAD/CAM軟體等。

Medit Apps

「Medit Apps」索引標籤僅顯示Medit所研發的原創應用程式的列表。

已下載

「已下載」索引標籤可顯示當前已安裝在您電腦端的應用程式以及使用者帳號有下載記錄的應用程式清單。

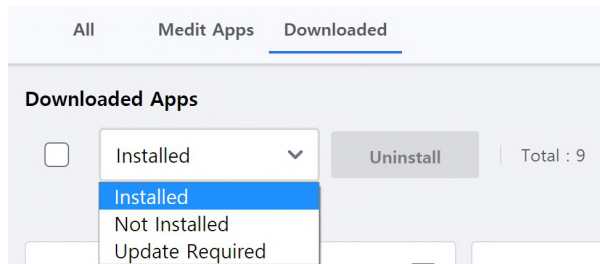

- **已安裝**：該選項僅顯示使用者當前登錄的電腦上所安裝的應用程式。
- **未安裝**：該選項可讓您看到已安裝在其他電腦上的應用程式，以便您進行快速安裝。
- **需更新**：該選項僅顯示當前電腦上所安裝的並需要進行更新的應用程式。

Trash Box

Trash Box臨時存儲已刪除的案例。Trash Box的任何案例均可被還原或永久性刪除。

⚠ 注意

從Trash Box中所刪除的數據將被從電腦及伺服器中永久刪除且無法得到恢復。

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

案例同步管理器

案例同步管理器可幫助您在Medit Link中上傳及下載案例。您可將多份案例上傳至雲端或將其下載至您的本地電腦端。

[illegible]

上傳

案例總數/所選案例數	查看需要上傳的全部/所選案例的數量。
上傳全部	將所有案例上傳到雲端。
取消全部	取消全部上傳請求。
	將案例上傳到雲端。
	取消上傳案例。
	重新嘗試上傳案例。

下載


案例總數/所選案例數	查看需要下載的全部/所選案例的數量。
下載全部	將所有案例下載到您的電腦。
取消全部	取消全部下載請求。
	將案例下載到您的電腦。
	取消下載案例。
	重新嘗試下載案例。

相關網站

您可以直接前往僅適用於Medit Link網頁端的菜單，如「My Info」、「Partners」及「Membership」。請參閱「Medit Link」>「Medit Link網頁端」>「[Partners](#)」、「[Membership](#)」及「[My Info](#)」，瞭解Medit Link網頁端中菜單的詳細說明。

您可以訪問Medit的線上商店Medit Shop，購買掃描儀的延長保固期服務以及其他Medit商品，如掃描儀背包。

您還可以獲取有關使用Medit Link的各種資訊。訪問Medit的教育及資訊資源，如Medit幫助中心y、Medit Academy YouTube頻道及Medit Academy線上教育平台。

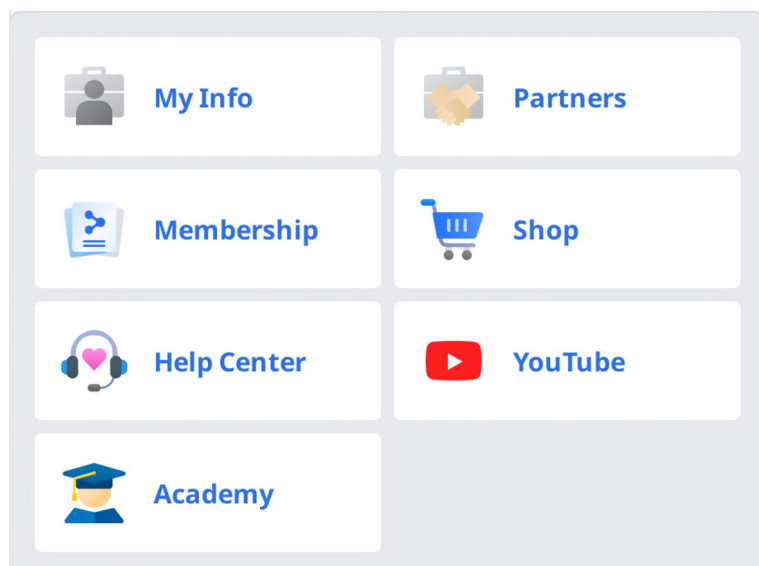

檔案檢視器

檔案檢視器可分組並顯示各種數據，包括從與Medit Link相關聯的程式處所獲取的數據以及使用者附加的數據。


可提供基本的管理功能，如顯示/隱藏數據、調整不透明度及刪除數據。

支持預覽以下格式的檔案：

- 3D數據：STL、OBJ、PLY
- 2D影像：PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 影片檔案：MKV、MP4、AVI、WMV

數據樹

可在數據樹中分組並顯示案例的所有數據。也可以從數據樹顯示/隱藏數據、調整透明度及刪除數據。




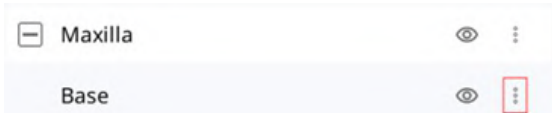
	顯示/隱藏	可顯示或隱藏相應的數據。
	不透明度	當您點擊數據樹上的某數據時，滑動軸便會出現。您可透過移動滑動軸來調整所顯示數據的不透明度。 
	更多	點擊「更多」圖示即可顯示其它可用的功能。  • 僅顯示此項：隱藏所有其它數據而僅顯示相應的數據。 • 隱藏：隱藏數據。 • 複製：複製數據並將其添加至附件組。 • 匯出：匯出所選擇的檔案。 • 重新命名：修改數據的名稱。 • 刪除：刪除數據。

重要資訊

您可在線上時對數據進行重新命名。

模具控制工具

3D 模具控制

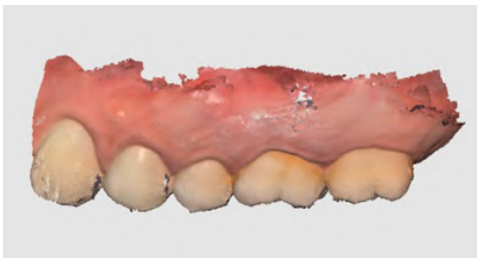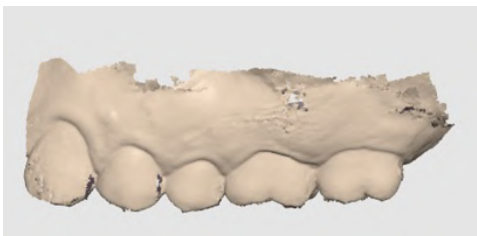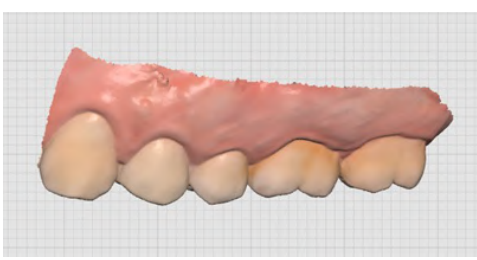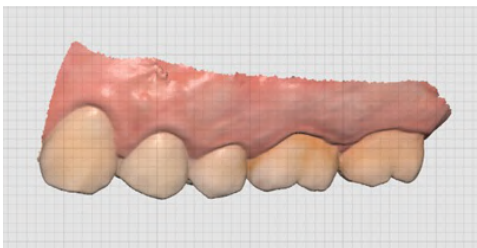	平移	移動模型。
	旋轉	旋轉模型。
	放大/縮小	放大和縮小模型。
	縮放至窗口大小	將模型置於螢幕中央。
	模型顯示模式	開啟紋理
		關閉紋理
	網格設定(mm)	開啟網格
		開啟圖層重疊
		關閉網格
		以真實的紋理顏色來顯示數據。 
		顯示單色數據。 
		在背景中顯示網格。 
		將網格重疊於模型之上。 
		隱藏網格。

2D影像控制


	下一個/下一個影像	可在影像中前後移動。
	編輯	編輯影像。
	捏合/貼上視窗	可分離影像視窗並將其調整到所需的位置。可調整視窗的大小。當視窗還原到其原始位置時，視窗大小也會恢復至預設大小。

功能工具

截屏和備註


可將當前螢幕截取為2D影像，在上面進行繪製或添加附註。


可將其與您的附註一併保存為一個檔案，然後以參考數據的形式傳送。

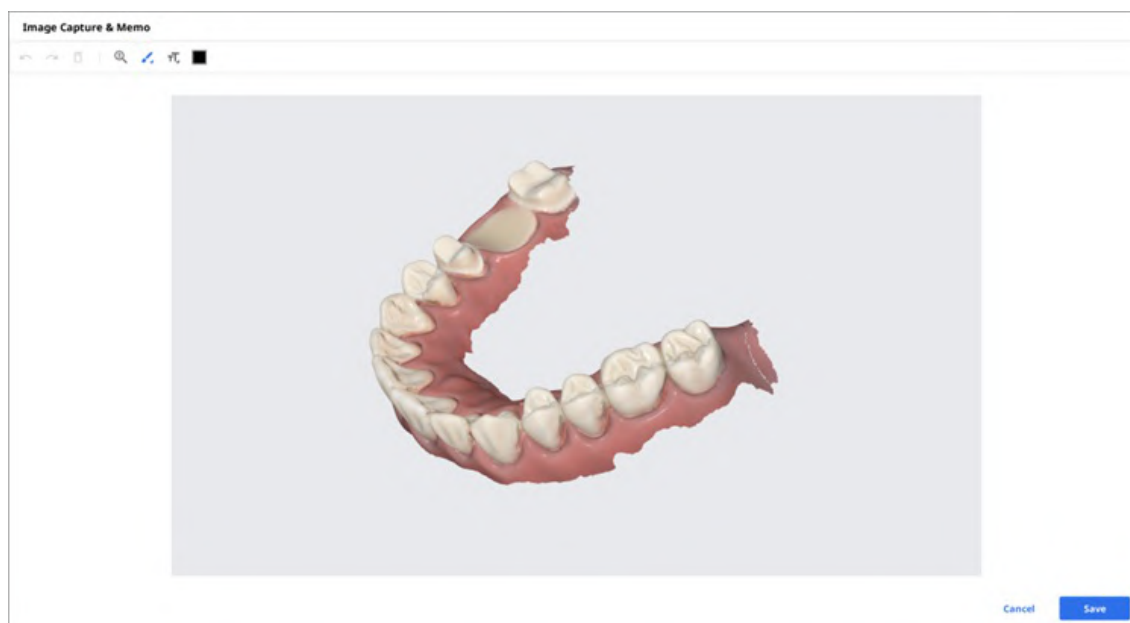

矯正截圖


截取當前視角方向及其上/下/左/右的影像。

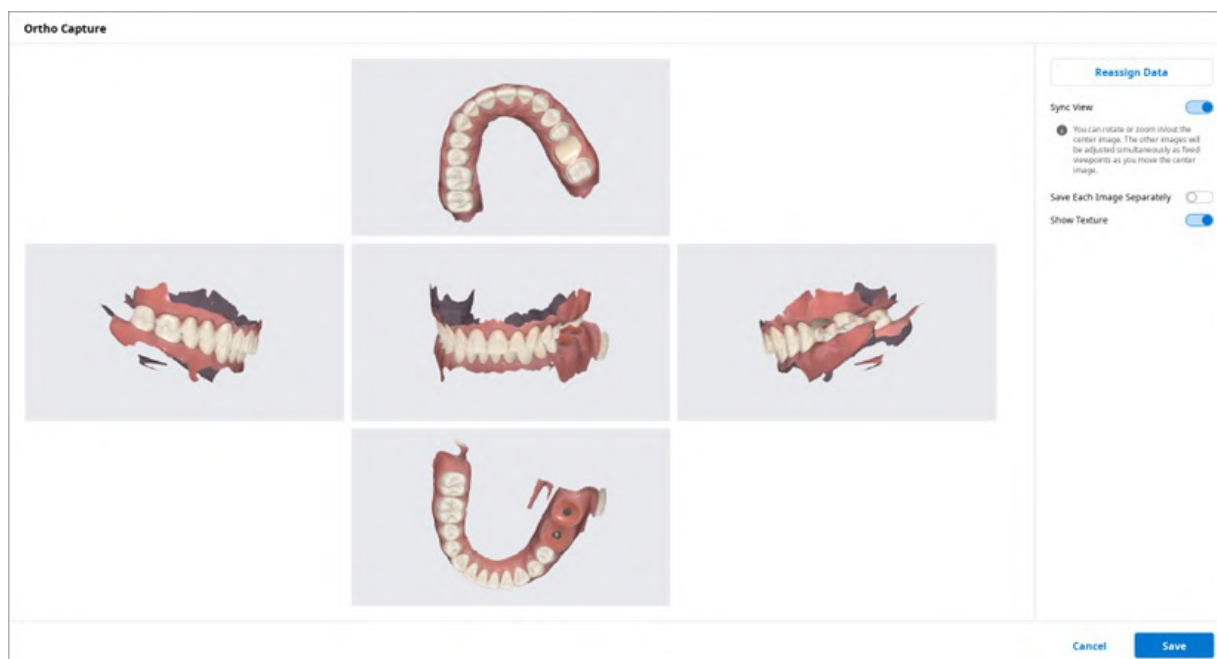

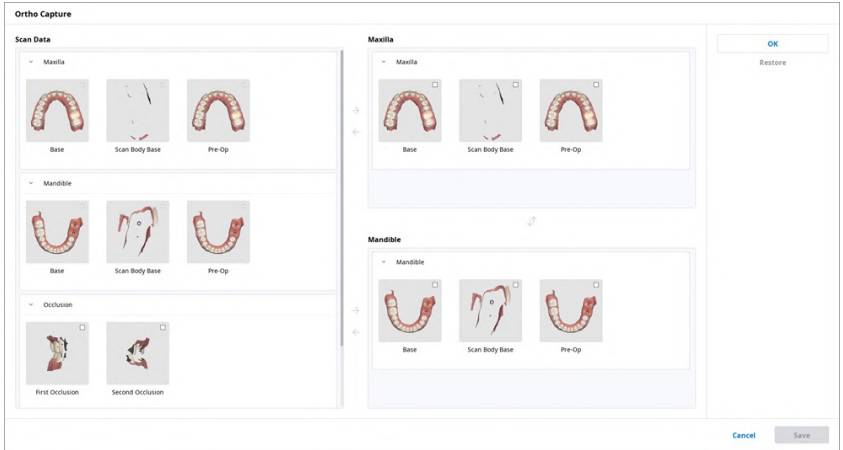同步視圖	當該工具開啟時，您可以旋轉或放大/縮小位於正中央的影像。而當您移動位於正中央的影像時，其它的影像也將按照固定的視角被同時被調整。 當該工具關閉時，您可以單獨平移、旋轉或放大/縮小所有影像。
分別保存每個影像	可將每張影像保存為高分辨率。
顯示紋理	開啟/關閉模型的紋理。
重新分配數據	透過「重新分配數據」功能修改上顎/下顎的數據。您可以使用已修改的數據來創建並運用「矯正截圖」的結果影像。  • 掃描數據：顯示案例的全部掃描數據。 • 上顎：顯示您所選的上顎數據。 • 下顎：顯示您所選的下顎數據。


填補缺口

以3D網格數據的形式來填補缺口。

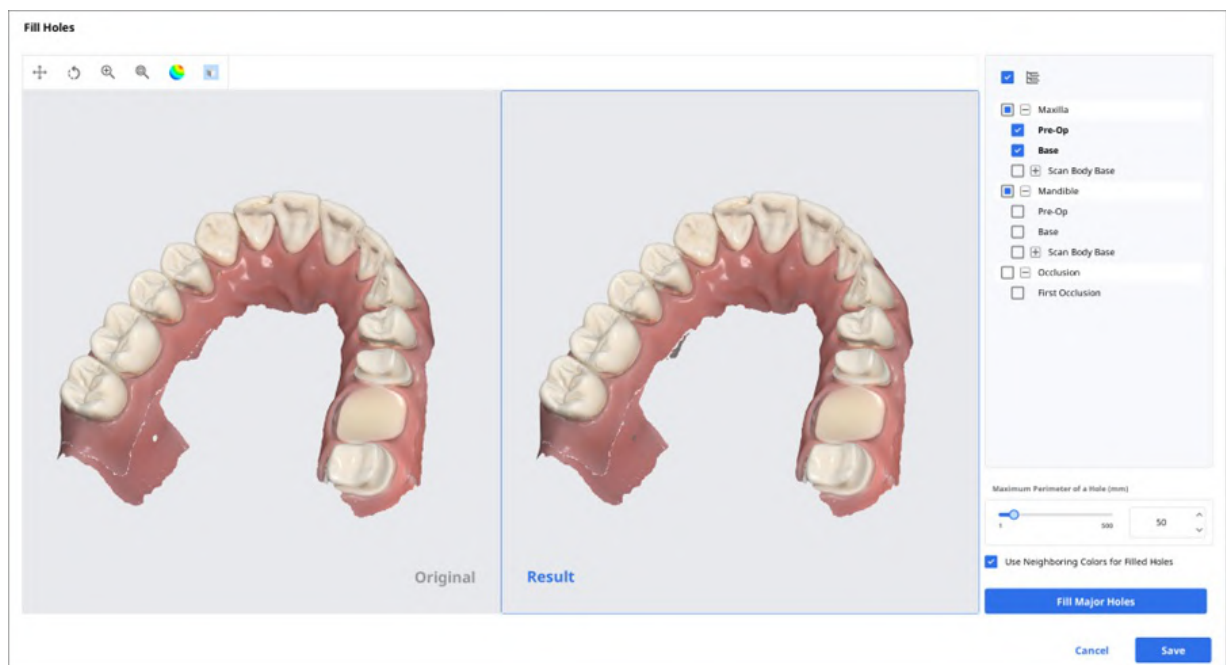

修剪


修剪功能提供多種編輯數據的工具。

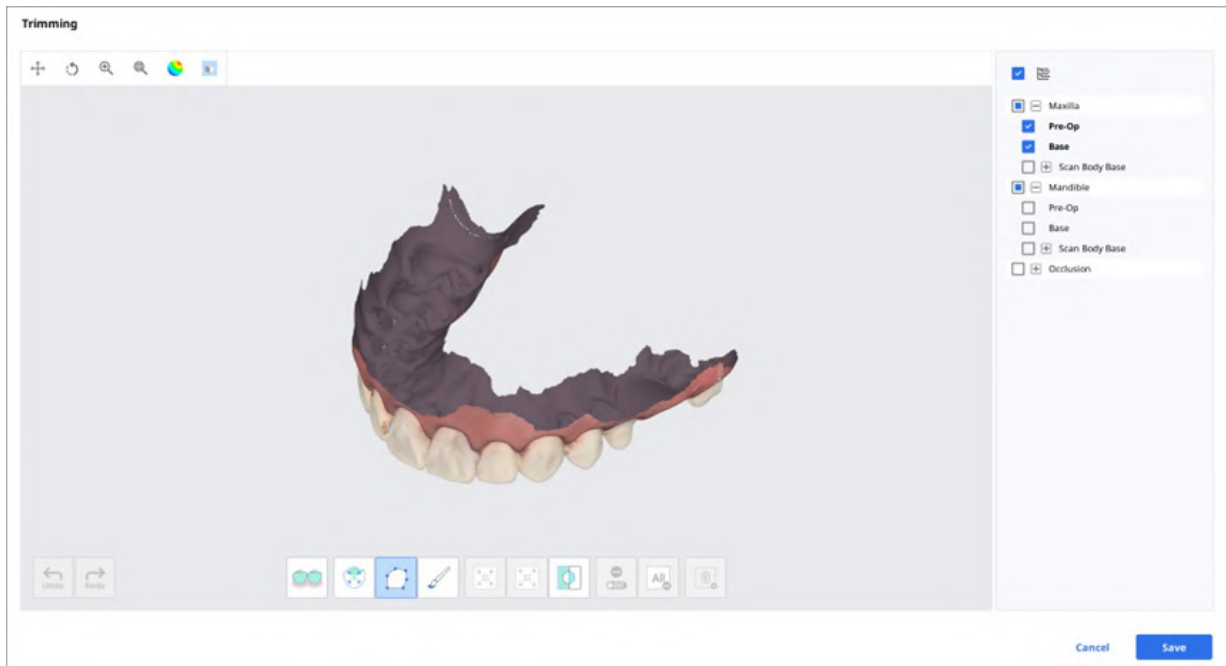

可以使用位於視窗底部的各式工具來編輯所選的3D網格數據。

選取		智能牙齒選取	排除牙齦部分，自動選擇牙弓上所有牙齒。 重要資訊 該功能僅適用於在「使用GPU」選項開啟時已使用Medit Scan for Clinics獲取的掃描數據。
		智能單牙選取	點擊即可自動選擇單顆牙齒區域。您可以在牙齒上點擊或拖動滑鼠。
		多邊形選取	全選螢幕上所繪多邊形內的所有圖元。
		筆刷選取	選擇螢幕上手繪路徑上的所有圖元。將僅選擇正面。筆刷有三種大小。
所選區域的調整		縮小所選區域	每次按此按鈕將縮小所選區域。
		展開所選區域	每次按此按鈕將展開所選區域。
		反轉所選區域	反轉所選選項。
取消選取		選取/取消選取	啟用後，可使用各種工具取消選取區域。
		清除全部選擇	清除所有所選區域。
		刪除所選區域	刪除所選區域中的數據。

1. 使用區域選取工具選擇要修剪的區域。

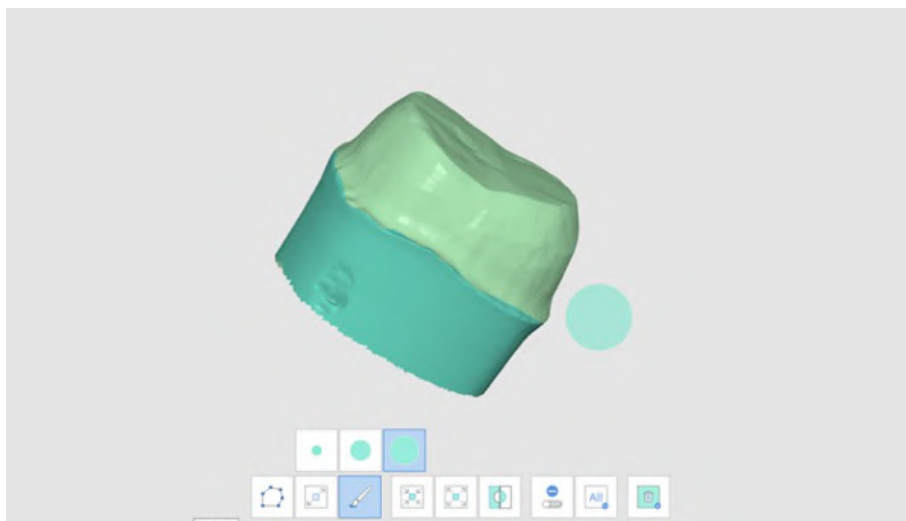


重要資訊


多邊形修剪工具可選取螢幕上所繪製的多邊形內的所有圖元，而筆刷修剪工具則只可選取正面的臉部數據。

2. 您可以通過下方的3種工具來反轉、縮小或展開所選區域。


- 反轉所選區域

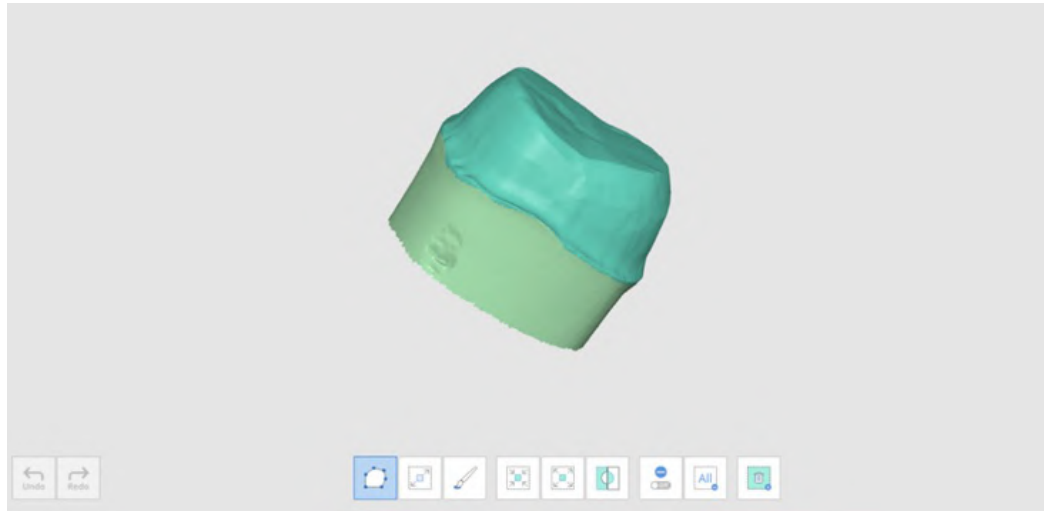

- 縮小所選區域

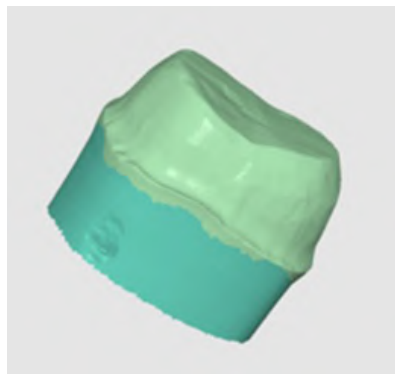

- 展開所選區域

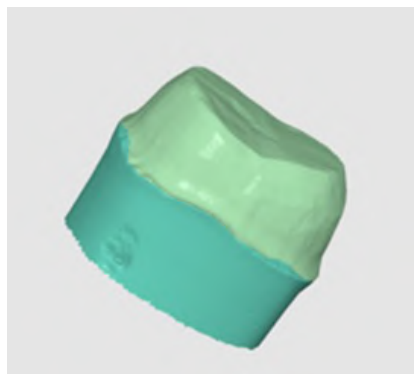






3. 您可以透過「刪除所選區域」工具來刪除之前所選的區域。

優化咬合對齊

優化咬合對齊。您可以選擇目標數據並調整咬合對齊。




補償等級

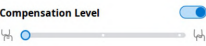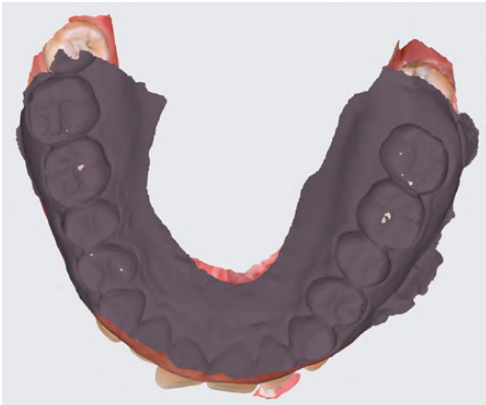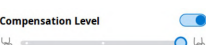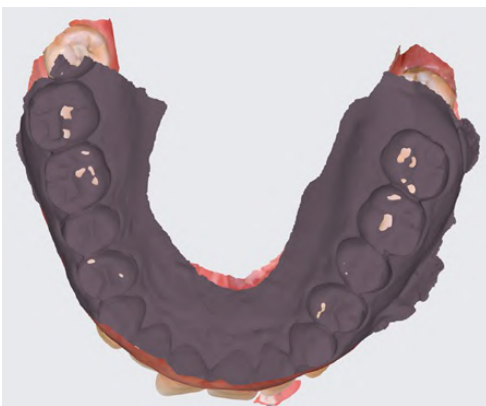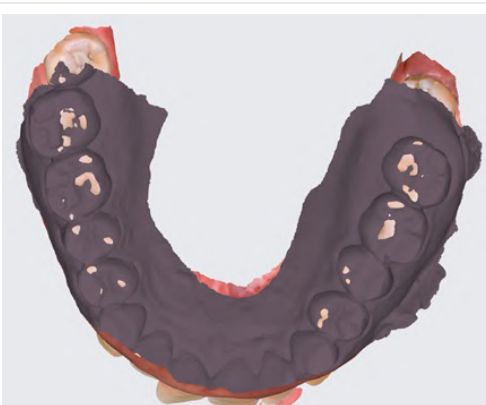低	Compensation Level 	
中	Compensation Level 	
高	Compensation Level 	
關閉	Compensation Level 	

下顎移動

您可以播放在Medit Scan for Clinics所錄製的「下顎移動」視頻，瞭解上下牙齒之間的動態咬合接觸情況

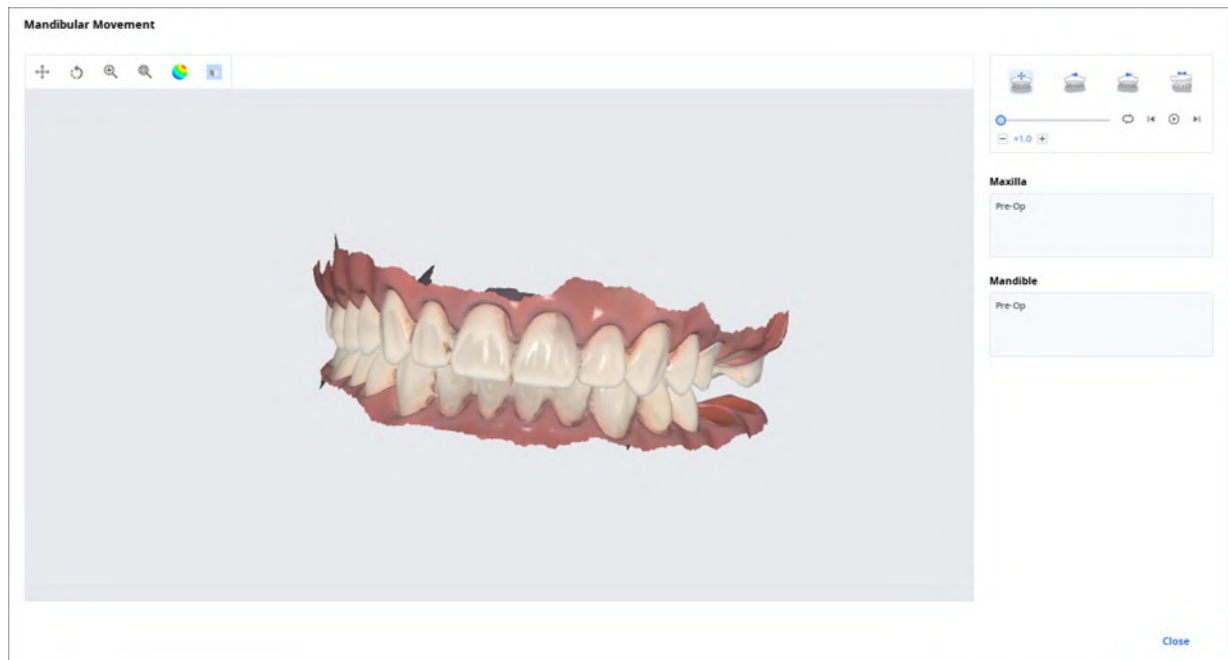

	自由移動	播放下顎自由移動錄製內容。
	左側移動	播放下顎向左側移動的錄製內容。
	右側移動	播放下顎向右側移動的錄製內容。
	前伸移動	播放下顎前伸移動的錄製內容。

在檔案檢視器中管理多重咬合數據

可從Medit的掃描應用程式中獲取多個咬合數據的結果。

Medit Link透過「檔案檢視器」來提供管理結果的功能。

如何管理多個結果


當使用者從Medit Scan for Clinics中獲取了多個咬合結果時，Medit Link可提供選擇其中一項結果的選項。

結果列表將按名稱列出，您可以選擇其中一項。

所選模型將顯示在「數據樹」及「模型顯示區域」中。



您可以使用箭頭圖示來折疊列表並修改相應的條目。

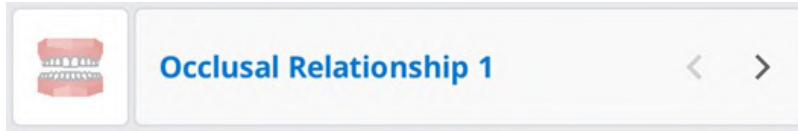

檢視選項

您可以修改「檢視選項」，自訂Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box中案例列表的佈局形式。

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

狀態篩選器

顯示或隱藏每個表示案例狀態的篩選項。隱藏的狀態篩選項將不會顯示在Case Box/Work Box/In Box/Order Box的螢幕上。

您可以通過「狀態篩選器」來輕鬆找到您所需的案例。

- 您可以點擊您想查看的狀態進而僅顯示該狀態下的案例。
- 您可以一次性選擇多個狀態。

每個Box可用的篩選選項如下：

Box	狀態篩選器
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

表頭

選擇要在Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box的案例列表中顯示的項目。您可以在列表視圖中修改表頭的順序或表欄的寬度，進而使使用者體驗達到最佳效果。

每個Box可用的表頭如下：

Box	表頭
Patient	患者姓名/患者ID/性別/案例數/注册日期/出生日期
Case Box	狀態/案例名稱/出生日期/表單資訊/上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱
Order Box	狀態/案例名稱/患者姓名/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/請求的交付日期/上次修改日期
In Box	狀態/案例名稱/訂單日期/請求的交付日期/上次修改日期/診所名稱
Work Box	狀態/案例名稱/患者姓名/表單資訊/上次修改日期/請求的交付日期/掃描日期/診所名稱/訂單日期

視圖類型

在Case Box的「縮略圖視圖」與「列表視圖」中選擇檢視類型。

每個Box可用的視圖類型選項如下：

Box	視圖類型選項
Patient	列表視圖
Case Box	列表視圖/縮略圖視圖
Order Box	列表視圖
In Box	列表視圖
Work Box	列表視圖

分組

選擇一種分組選項即可通過該選項來分類並重新排列列表中的案例。

每個Box可用的分組選項如下：

Box	分組選項
Case Box	無/患者姓名/掃描日期/訂單日期
Order Box	無/掃描日期/訂單日期/請求的交付日期
In Box	無/訂單日期/請求的交付日期
Work Box	無/請求的交付日期

重要資訊

分組選項不適用於Patient、Case Talk及Trash Box中。

排序

選擇一個排序選項即可根據該選項來修改列表中的案例順序。

每個Box可用的排序選項如下：

Box	分組	排序選項
Patient	-	患者姓名/患者ID/出生日期/注册日期/案例數
Case Box	無	患者姓名/上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱
	患者姓名	上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱
	掃描日期	患者姓名/上次修改日期/訂單日期/技工所名稱
	訂單日期	患者姓名/上次修改日期/掃描日期/技工所名稱
Order Box	無	患者姓名/掃描日期/訂單日期/請求的交付日期/技工所名稱
	掃描日期	患者姓名/訂單日期/請求的交付日期/技工所名稱
	訂單日期	患者姓名/掃描日期/請求的交付日期/技工所名稱
	請求的交付日期	患者姓名/掃描日期/訂單日期/技工所名稱
In Box	無	患者姓名/訂單日期/請求的交付日期/診所名稱
	訂單日期	患者姓名/掃描日期/請求的交付日期/診所名稱
	請求的交付日期	患者姓名/訂單日期/診所名稱
Work Box	無	患者姓名/上次修改日期/請求的交付日期/診所名稱
	請求的交付日期	患者姓名/上次修改日期/診所名稱


 重要資訊

排序選項不適用於Case Talk和Trash Box中。

篩選和搜尋


按患者篩選

按患者姓名來篩選並顯示案例。您可通過只篩選出需要進行操作的患者來創建一個列表。

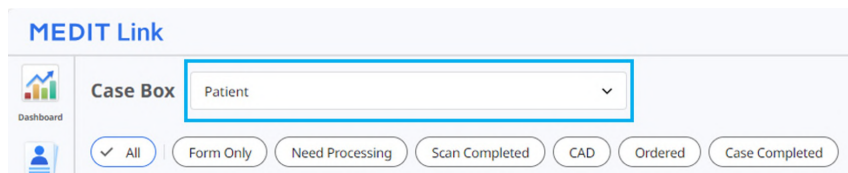

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a 'Dashboard' icon. The main area has a 'Case Box' dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (with a checkmark), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.


1. 輸入患者姓名。

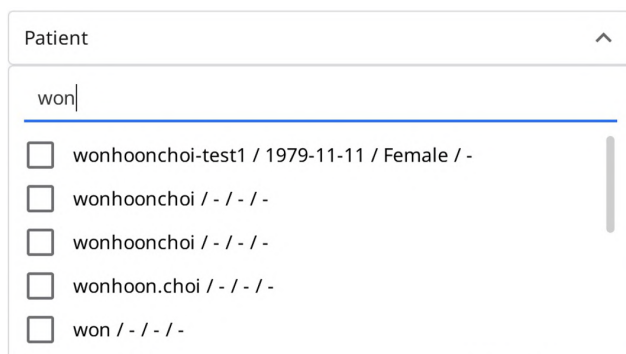

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' case box. The search input field contains 'won'. Below the input, there is a list of search results, each preceded by an unchecked checkbox:

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 在下方的搜尋結果中選擇相應的患者。

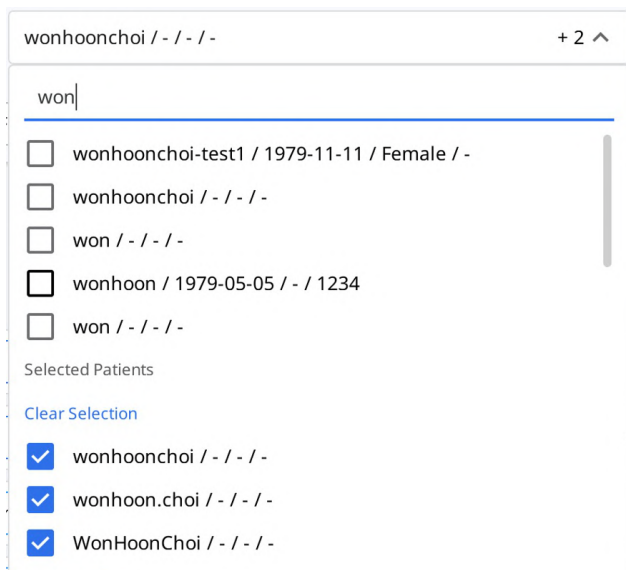

This screenshot shows the dropdown menu with search results selected. The search input field still contains 'won'. The list of results is the same as in the previous step. Below the list, there is a section titled 'Selected Patients' with a 'Clear Selection' link. Three checkboxes are now checked:

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 只有被選患者的案例會顯示在列表中。

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

按日期篩選

篩選並顯示在所設置時段進行過最後一次修改的案例。

1. 點擊時段篩選。




2. 從列表中選擇時段。

- 所有：顯示全部案例。
- 自定義範圍：指定對案例進行過最後一次修改的起始及結束日期。
- 今天：顯示在當天進行過最後一次修改的案例。
- 昨天：顯示在昨天進行過最後一次修改的案例。
- 最近7天：顯示除當天外在最近7天進行過最後一次修改的案例。
- 最近30天：顯示除當天外在最近30天進行過最後一次修改的案例。
- 本月：顯示在本月進行過最後一次修改的案例。
- 上個月：顯示在上個月進行過最後一次修改的案例。

若所選時段內已創建過或最近修改過案例，案例列表將被即時更新。

進階搜尋功能

利用搜尋功能來快速找到您想要的資訊。

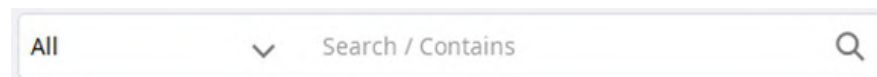

每個Box可用的搜索條件如下：

Patient	所有、患者姓名、患者ID
Case Box	所有、案例名稱、患者姓名、患者ID、表單資訊、技工所名稱
Order Box	所有、案例名稱、患者姓名、患者ID、技工所名稱、訂單ID
In Box	所有、案例名稱、患者姓名、診所名稱、訂單ID
Work Box	所有、案例名稱、患者姓名、表單資訊、診所名稱、訂單ID
Case Talk	Case Talk名稱(包含)、患者姓名(等於)
Trash Box(診所)	所有、案例名稱、患者姓名、技工所名稱、刪除者
Trash Box(技工所)	所有、案例名稱、患者姓名、診所名稱、刪除者

您可以在選擇「搜尋條件」的同時選擇「包含」或「等於」這兩種邏輯操作中的一種。

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

創建/編輯/複製/刪除案例

創建案例

在Case Box中創建案例(診所)

1. 點擊右上角的「新案例」按鈕。

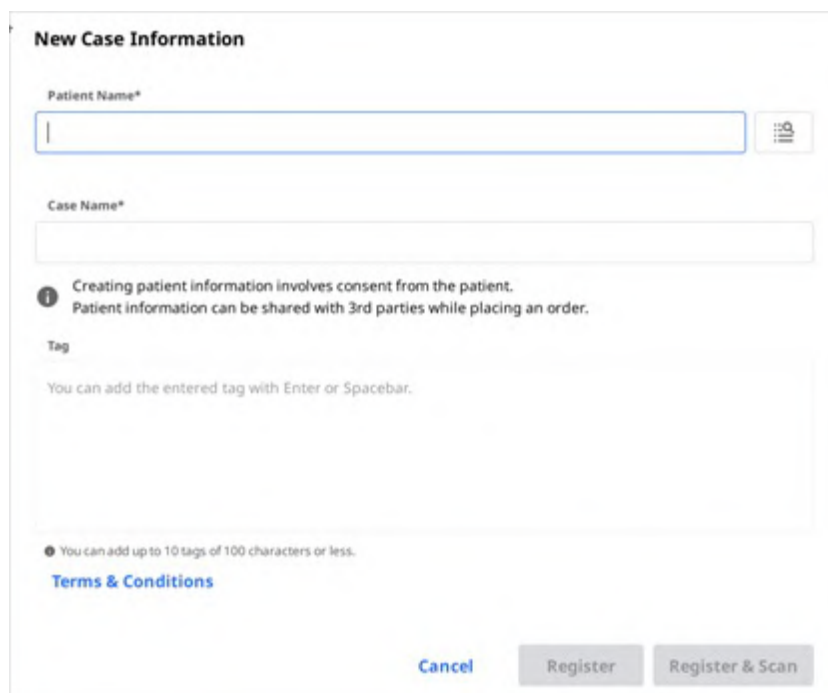


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a dropdown icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Tag**: A text input field with a placeholder "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Terms & Conditions**: A link below the tag field.
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan" at the bottom.
- Notes**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Footer**: A note stating "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."

2. 輸入基本資訊, 如患者姓名及案例名稱。
 - 如您輸入名字不在患者列表上, 其將以新患者的形式自動添加至列表。
 - 如您輸入的名字已在患者列表中, 您可以從列表中直接進行選擇。
 - 如要針對現有的患者註冊案例, 請點擊「患者列表」圖示來選擇現有的患者。



- 在「患者列表」對話方塊中, 您可以註冊新患者或編輯現有患者的資訊。

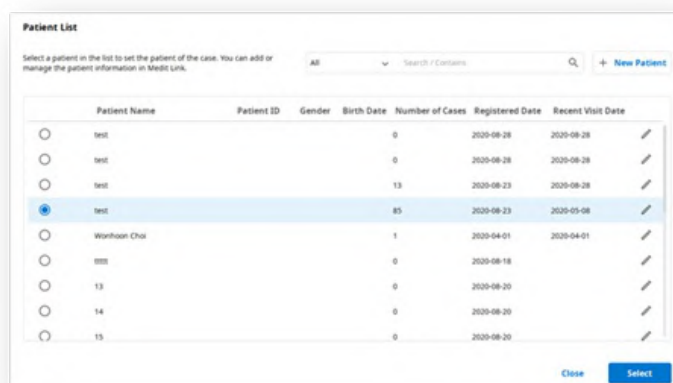

The "Patient List" dialog box displays a table of existing patients. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. The table contains 10 rows of data. The first four rows have "test" as the Patient Name. The fifth row has "Worhoon Choi". The last five rows have "13", "14", and "15" as Patient Names. The "Number of Cases" column shows values 0, 0, 13, 85, 1, 0, 0, 0, 0, and 0. The "Registered Date" column shows dates from 2020-08-28 to 2020-04-01. The "Recent Visit Date" column shows dates from 2020-08-28 to 2020-04-01. The fourth row is selected. There are radio buttons to the left of each row. At the bottom right, there are "Close" and "Select" buttons.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date
test				0	2020-08-28	2020-08-28
test				0	2020-08-28	2020-08-28
test				13	2020-08-23	2020-08-28
test				85	2020-08-23	2020-05-08
Worhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01
13				0	2020-08-18	
13				0	2020-08-20	
14				0	2020-08-20	
15				0	2020-08-20	

3. 系統將自動填寫案例名稱, 但同時您可以對其進行修改。
4. 點擊「註冊&掃描」, 完成案例註冊並進行掃描。
 - 註冊: 您將被重新轉至主頁。適用於註冊多個案例時的情況。

- 註冊 & 掃描：移至「表單」索引標籤，為案例註冊表單資訊。

在Work Box中創建案例（技工所）

1. 點擊右上角的「新案例」按鈕。

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. 輸入或選擇診所名稱。
3. 輸入患者姓名及案例名稱。系統將自動填寫案例名稱，但同時您可以對其進行修改。
4. 據工作的完成日期來輸入預計交付日期。
5. 註冊案例後，您將被重新轉至主頁。

創建案例

在Case Box中編輯案例（診所）

1. 點擊案例名稱旁的「編輯」圖示。

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. 點擊「搜尋」圖示，修改患者姓名。請注意：不可直接編輯；相反，您可以找一個您想要替換當前姓名的患者姓名並從列表中來編輯患者資訊。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. 查看您想要替換當前姓名的患者姓名。
4. 如要創建新患者，請按下「新患者」按鈕。
5. 使用「編輯」圖示來修改有關患者的註冊資訊。
6. 按下「應用」即可完成整個流程。

在Work Box中編輯案例（技工所）

1. 點擊案例名稱旁的「編輯」圖示。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 編輯完成後點擊「應用」。

🔑 重要資訊

您可以編輯透過In Box中的訂單所收到的案例的相關資訊。

複製案例

在Case Box中複製案例（診所）

1. 點擊螢幕頂部的「複製」圖示。



2. 您需要選擇將何種資訊複製到新案例。

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. 選擇僅複製表單資訊或複製全部數據。
4. 複製完成後，系統將創建生成一個名為「[案例名稱] — 複製」的案例。

在Work Box中複製案例（技工所）

1. 點擊螢幕頂部的「複製」圖示。



2. 複製所有數據，創建一個新案例。
3. 複製完成後，系統將創建生成一個名為「[案例名稱] — 複製」的案例。


刪除案例

刪除案例(診所和技工所)

1. 點擊「刪除」圖示。



2. 點擊「確定」，刪除案例。

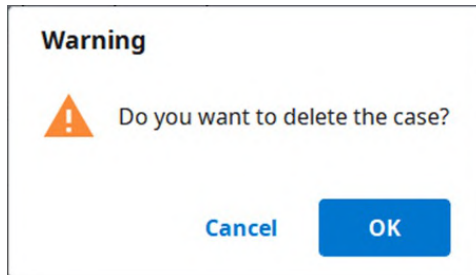

3. 已刪除的案例將被移至Trash Box且可在必要時被恢復。

表單資訊

您可以基於您所連接的程式及治療類型來輸入表單資訊。

您所輸入的資訊將被用作掃描、CAD程式及訂購的基本資訊

在Case Box中註冊表單資訊。

在表單索引標籤中輸入

1. 選擇您要按牙齒還是牙弓來輸入治療資訊。
2. 選擇類型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您輸入的資訊不正確，您可返回去重新選擇。
 - 所選資訊將被自動註冊到訂單列表中。
3. 點擊「保存」，保存您的註冊資訊。

在Work Box中註冊表單資訊。

在表單索引標籤中輸入


1. 選擇您想使用的掃描程式。
2. 從下方選項中選擇一項來定義您掃描策略的選項：牙齒/柔性多代型/多代型。
3. 具體方法會基於所選的掃描程式而產生不同。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
牙齒	O	O
牙弓	O	O
柔性多代型	X	O
多代型	X	O

4. 選擇掃描流程所需的牙齒、牙弓或代型編號。
5. 選擇類型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您輸入的資訊不正確，您可返回去重新選擇。
 - 所選資訊將被自動註冊到列表中。
6. 點擊「保存」，保存您的註冊資訊。

將牙齒連接至牙橋

您可以在相同的材料被應用至多顆鄰牙時將多顆牙齒連接至牙橋 點擊所選牙齒旁邊的牙橋圖示來進行連接或斷開連接。

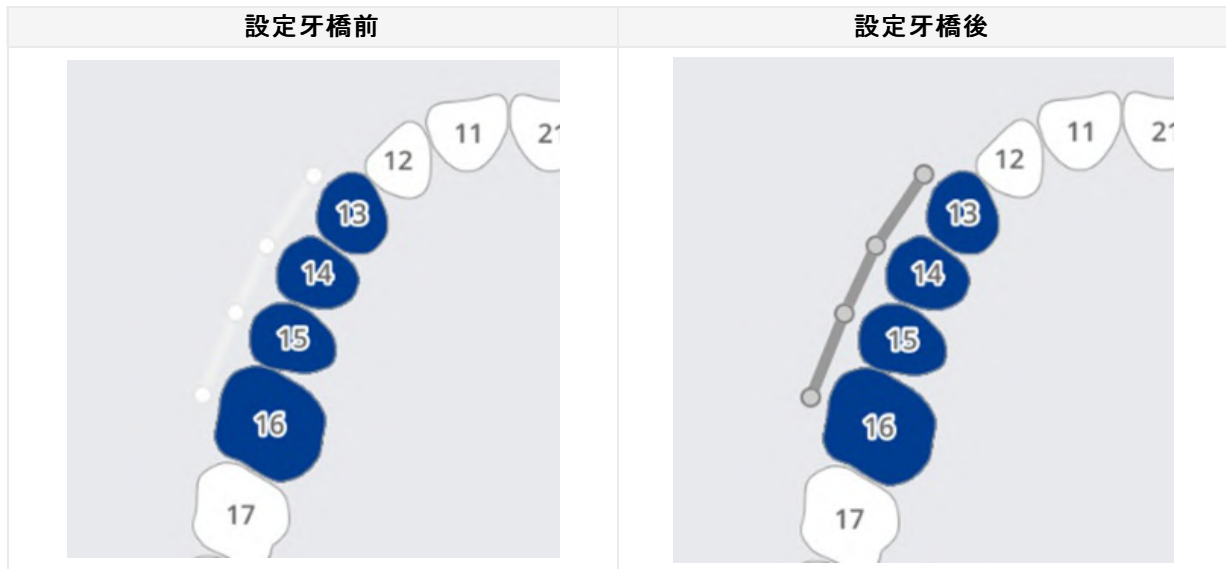

設定掃描選項

根據您正在使用的程式，系統可提供不同的掃描選項。

所選的掃描選項將被傳送至每個掃描程式。

Medit Scan for Labs

常規選項

	鄰牙	標記預備牙和相鄰牙，並將此資訊傳遞給掃描程式。
	對咬牙	自動標記對咬牙並將此資訊傳遞給掃描程式。
	咬合架	顯示用於在掃描程式中選擇咬合架的選項。
	移動標記	可在掃描程式中使用「顎骨移動」掃描策略。

基於牙齒的選項

	掃描桿	可在掃描程式中設定掃描掃描桿的策略。
	術前掃描	可在掃描程式中設定掃描術前模型的策略。
	蠟型掃描	可在掃描程式中設定掃描蠟型的策略。

添加至喜好項目

您可以透過將產品註冊為喜好項目來快速選擇相應的產品。

已註冊為喜好項目的列表可作為模板來管理，並可透過匯出與匯入功能來進行共享。

添加至喜好項目

- 選擇牙齒編號。
- 選擇類型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 即使沒有全選，類型 — 方法 — 材料 — 牙色也可被註冊為喜好項目。

3. 點擊「星號」圖示。



4. 除牙齒編號外的所選參數均將被列在您的喜好項目搜尋列表中。

管理喜好項目模板

您可以註冊、管理及共享不同類型的模板。

添加	添加新模板
重新命名	重命名當前模板。
刪除	刪除當前模板。
匯出	將當前模板匯出至檔案。
匯入	匯入模板檔案。

操作掃描/CAD

掃描流程

您可基於所輸入的資訊來進行掃描。

1. 輸入/保存治療資訊，然後選擇必要的掃描選項。
2. 點擊視窗右上角的「掃描」按鈕。

CAD流程

Medit Link可提供DentalCAD整合應用程式，用於連接Medit Link與DentalCAD。

1. 安裝App Box中的DentalCAD Integration應用程式。
2. 前往案例詳情，點擊「快速啟動器」上的DentalCAD Integration應用程式圖示。
3. 在彈出的對話方塊中為電腦上安裝DentalCAD應用程式指定路徑。
4. 輸入掃描案例的案例詳細資訊，然後點擊DentalCAD Integration應用程式圖示，其將彈出一個用於創建dentalProject檔案的對話方塊。
5. 註冊DentalCAD的表單資訊，然後點擊「打開」來打開CAD程式。
6. 如果您安裝的是DentalDB Integration應用程式，CAD結果將被自動發送至exocad中指定的保存路徑中。
(僅適用於技工所帳號)


利用附加應用程式

附加快速啟動器

您可以透過點擊「快速啟動器」中已安裝的應用程式圖示來直接運行各種附加應用程式。您可以拖動這些應用程式的圖示來變更其順序。



應用程式啟動器管理

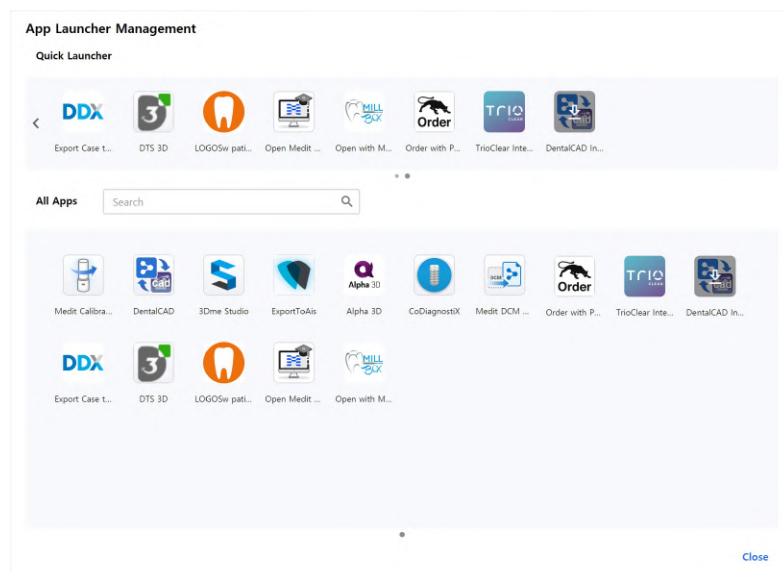

快速啟動器

您可以指定需要在「快速啟動器」中顯示的應用程式。您可以拖動這些應用程式的圖示來變更其順序，也可以創建資料夾來將類似的應用程式進行歸類整理。

所有應用程式

您已安裝的所有應用程式均會顯示。您可以在應用程式圖示上點擊滑鼠右鍵，進而將相應的應用程式添加至「快速啟動器」中。透過滑鼠右鍵點擊內容菜單，您還可以選擇運行、安裝或卸載相應的應用程式。

獲取結果檔案

匯出掃描結果檔案

除了通過訂單與合作夥伴共享結果外，Medit Link還允許您運用匯出功能以您所期望的格式來存儲您的結果檔案。

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

102


匯出檔案至	指定您想要存儲結果檔案的路徑。
資料夾名稱	系統將創建一個新的資料夾並將所有結果檔案存儲在其中。 預設資料夾的名稱將根據命名規則來設定。但您可以直接修改資料夾的名稱。 您可以在「設定」>「匯出選項」>「資料夾名稱規則」中定義命名規則。
檔案名	為結果設定檔案名。根據命名規則來設定檔案名。但您可以直接修改檔案名。 還可透過「設定」>「匯出選項」>「檔案名規則」來定義命名規則。
類型	選擇您要使用的設計程式。 Medit Link將根據您的選擇來自動調整檔案，進而允許您無需進行額外的軸線對齊即可繼續進行設計。
網格格式	指定網格檔案的格式。
影像格式	指定匯出影像檔案的格式。
壓縮檔案	將所有結果壓縮到一份檔案中。
組合單個網格	可將上顎或下顎的結果與單顆牙齒組合在一起。其適用於無法將多個檔案匯入程式的情況。
匯出所有咬合關係	當掃描應用程式生成了多個咬合結果時，您可以一次性匯出所有咬合結果。
將案例資訊保存為PDF	可將案例資訊與結果一起保存為PDF。

從「案例列表」中匯出結果檔案

您可以通過Case Box及Work Box中案例列表上方的「匯出」選項來匯出一份案例或同時匯出多份案例的結果檔案。

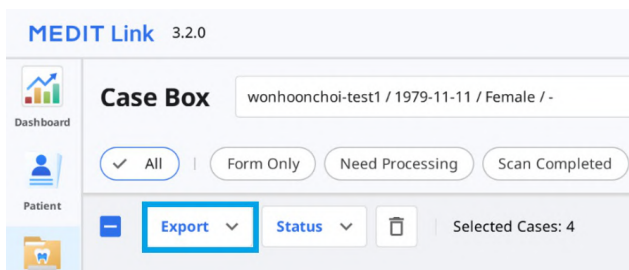

1. 前往Case Box或Work Box。
2. 從列表中選擇您想匯出結果檔案的所有案例。

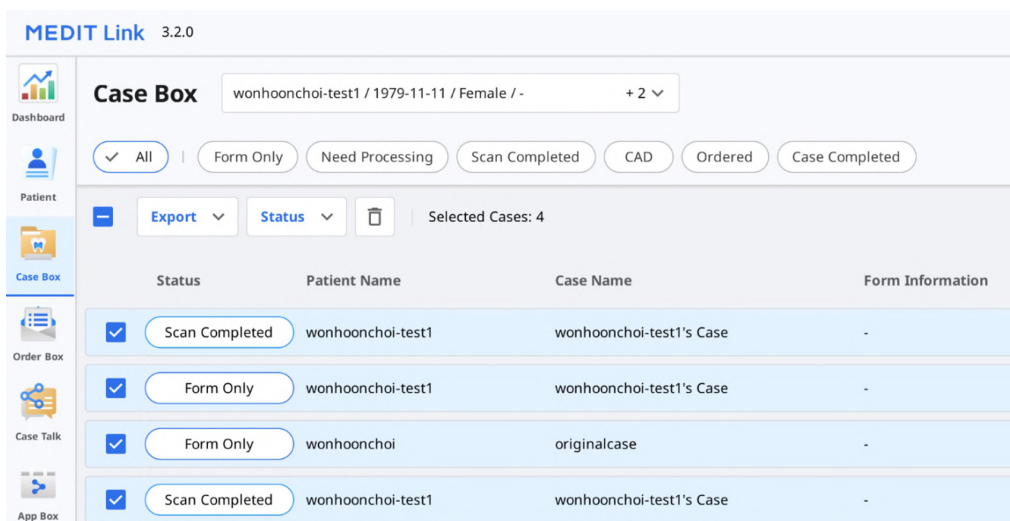

3. 點擊「匯出」並選擇「結果檔案」。

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

- 設定目標檔案夾、檔案類型、網格格式以及圖片格式，然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit ▾

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

🔑 重要資訊

當匯出多份案例的檔案時，「資料夾名稱」及「檔案名」欄為不可編輯。
資料夾名稱及檔案名將根據您在「設定」>「匯出選項」為「資料夾名稱規則」及「檔案名規則」所設定的規則來自動進行創建。

- 點擊「匯出」。
- 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

從「檔案檢視器」中匯出結果檔案

您可以通過「檔案檢視器」索引標籤右上角的「匯出」圖示來為某個案例匯出掃描結果檔案。

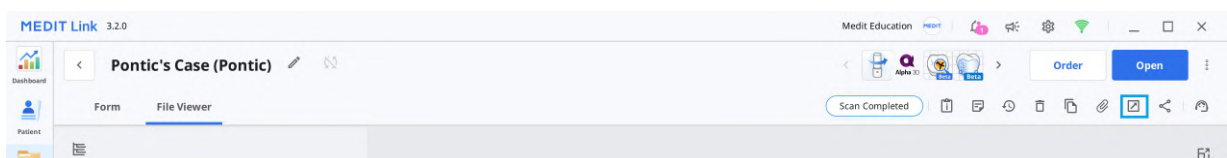

1. 前往Case Box或Work Box。
2. 點擊即可打開列表中的某個案例。
3. 點擊「檔案檢視器」索引標籤右上角的「匯出」圖示。



4. 設定目標檔案夾、資料夾名稱、檔案名、檔案類型、網格格式以及圖片格式，然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. 在「檔案列表」索引標籤中，您可以通過取消選擇多餘的檔案來為案例選擇所需的檔案。

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]

☒ [Icon] Maxilla
☒ Base

☒ [Icon] Mandible
☒ Base

☒ [Icon] Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion


☒ [Icon] Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible

☒ [Icon] Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export


6. 點擊「匯出」。

7. 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

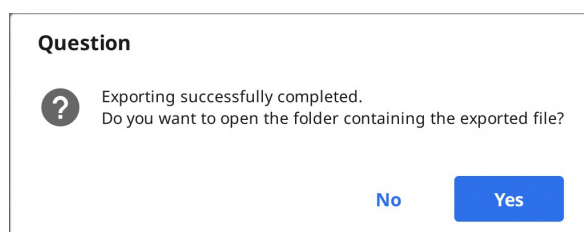

從「數據樹」中匯出結果檔案


您可以從檔案檢視器的展開菜單中匯出特定數據組中的一份或多份檔案。

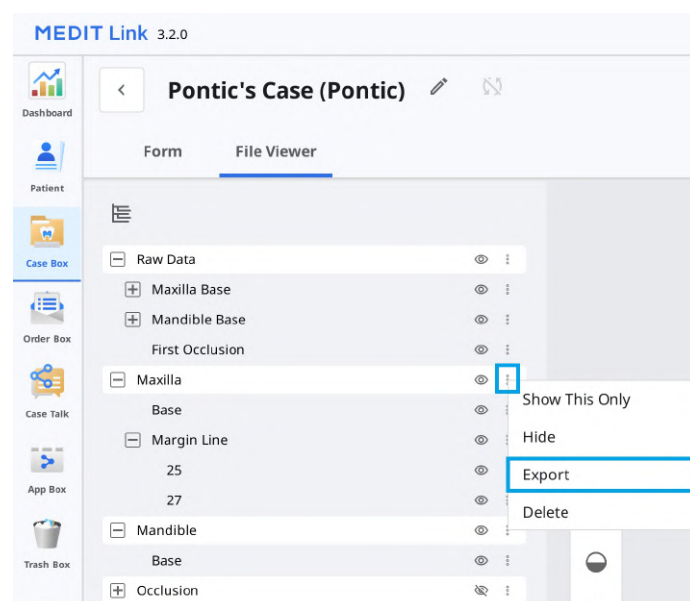

1. 轉至Case Box或Work Box。
2. 點擊即可打開列表中的某個案例。
3. 點擊數據組旁邊的三點圖示或檔案檢視器索引標籤中數據樹上的某一圖元。

...

4. 隨後點擊「匯出」。

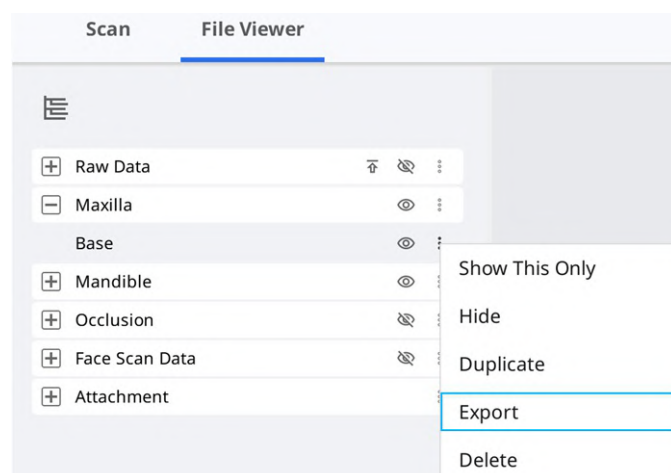

5. 設定目標檔案夾、資料夾名稱、檔案名、檔案類型、網格格式以及圖片格式，然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. 您可以看到「檔案列表」只選中了您在數據樹中所選擇的檔案。

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. 點擊「匯出」。

8. 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

匯出案例列表為CSV


Medit Link提供將案例列表匯出為CSV格式的功能。

您可匯出帶有基本資訊的案例列表並輕鬆管理案例。

1. 前往Case Box、Order Box、In Box或Work Box。
2. 選擇您要匯出的案例。

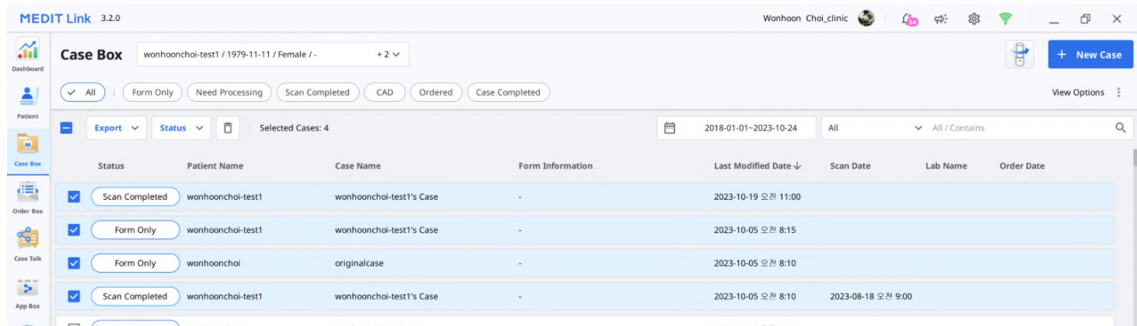

3. 點擊「匯出」，然後選擇「案例列表 (如圖所示)」或「案例列表 (包含所有項目)」。

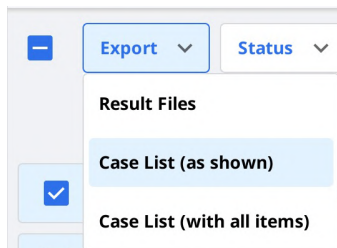

重要資訊

案例列表 (如圖所示)：匯出僅包含螢幕上當前所顯示項目的案例列表。轉到「檢視選項」>「表頭」，設定您需要顯示或隱藏的項目。

案例列表 (包含所有項目)：匯出包含所有項目的案例列表，包括狀態、案例名稱、出生日期、表單資訊、上次修改日期、掃描日期、訂單日期及技工所名稱。

4. 定義路徑及檔案名，然後保存列表。
5. 案例列表將保存為CSV檔案。

匯出邊緣線


Medit Scan for Clinics提供創建邊緣線的功能，而Medit Link可將邊緣線轉換到CAD程式中。

以顏色的形式匯出邊緣線

一般而言，Medit Link會將邊緣線轉換為相應的顏色並會將上顎或下顎與結果一同匯出。您可以參考顏色資訊從而在其CAD中創建邊緣線。

示例：

上顎

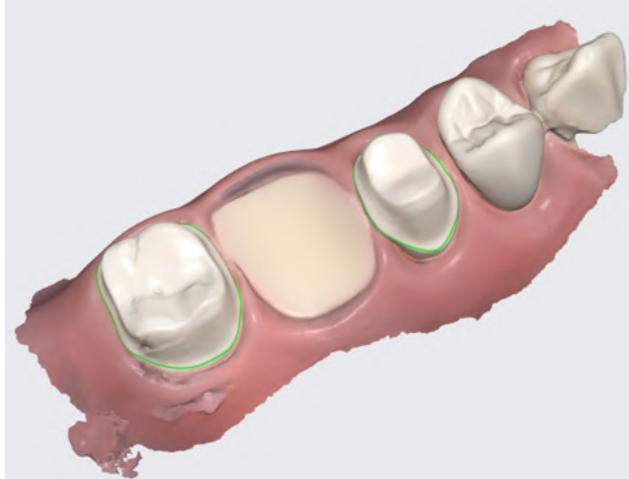

以顏色資訊表示邊緣線的結果

🔑 重要資訊

該功能適用於包含諸如meditMesh、OBJ、PLY等顏色資訊的格式。邊緣線不會轉換為STL格式。

🔑 重要資訊

「類型」>「3Shape」不支援該功能。


以檔案的形式匯出邊緣線

在exocad案例中，Medit Link可將邊緣線匯出為「~margin.xyz」格式，以使其能夠直接被匯入到exocad中。

無需任何其它操作，您便可以在exocad中使用該檔案。


示例：

上顎

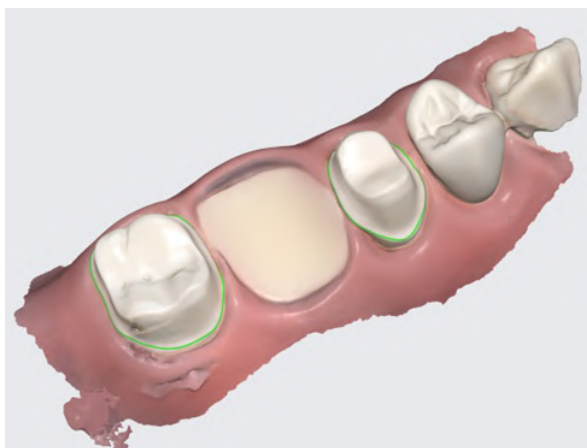

以顏色資訊表示邊緣線的結果

邊緣線

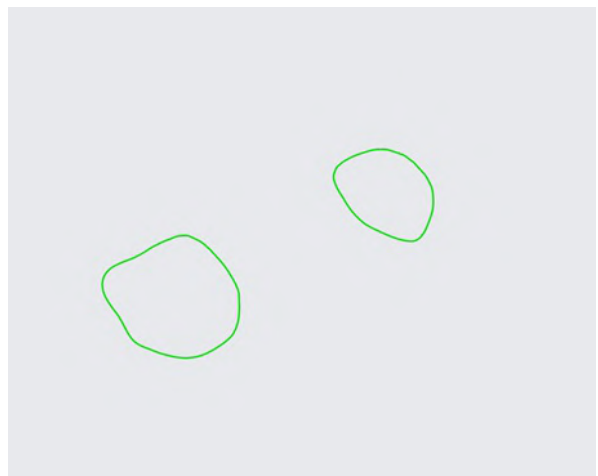

以單獨檔案的形式匯出邊緣線

從Medit Link網頁端下載檔案

Medit Link提供下載功能。

如想在不安裝Medit Link應用程式的情況下獲取結果檔案，您可從Medit Link網頁端來下載檔案。

重要資訊


如想從網頁端下載檔案，應先將數據上傳到Medit的雲端存儲空間。

在Medit Link網頁端的下列菜單中使用下載功能。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


您可以在右上角找到「下載」按鈕。

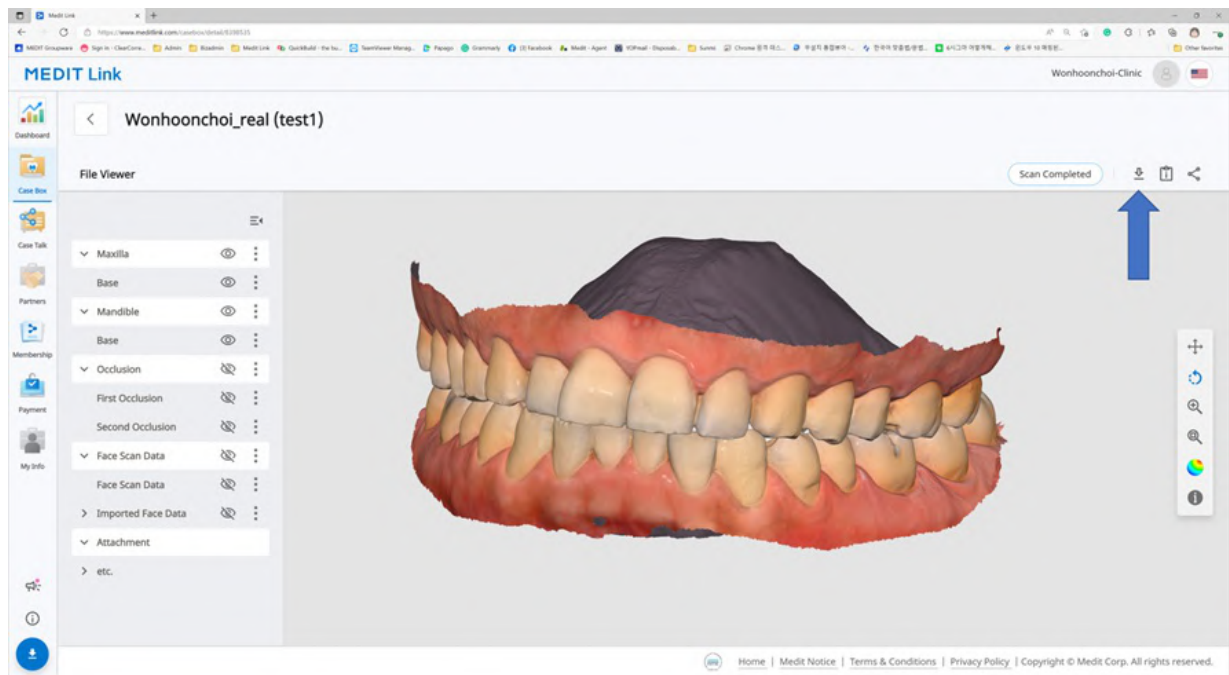

Web Viewer

當您使用Case Talk共享案例時，您可以設定是否允許下載。

如您勾選「授予下載權限」選項並共享案例，所有連結至共享連結的使用者便均可下載相應檔案。

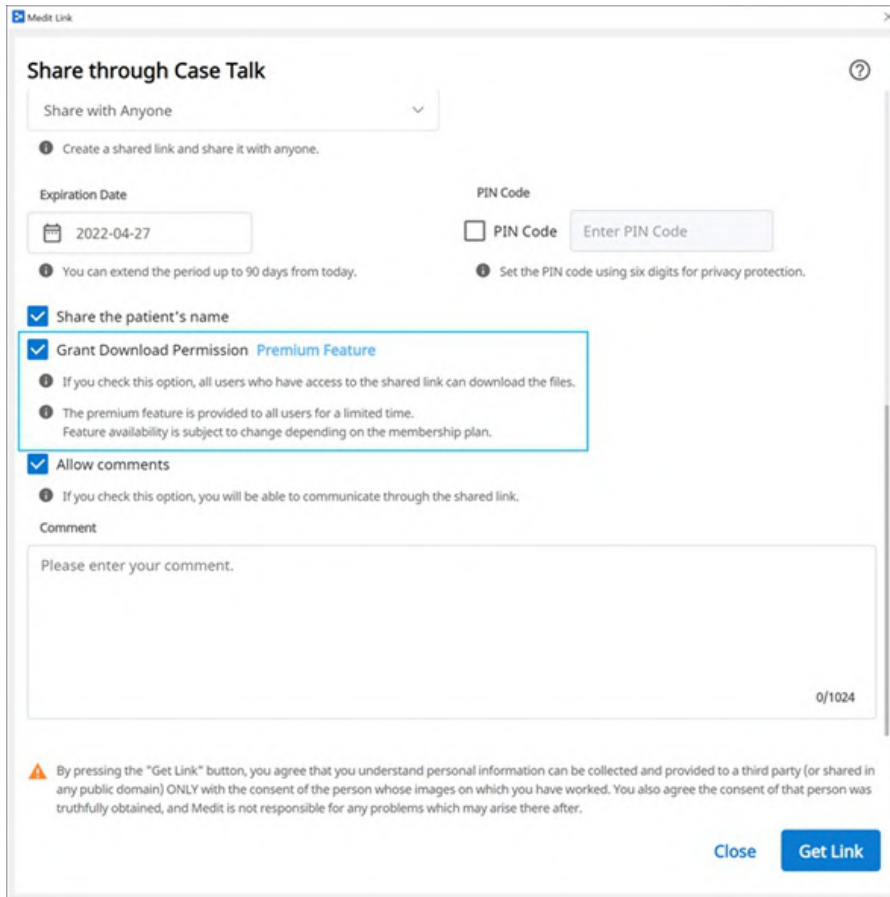

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

您可在Web Viewer頁面的右上角找到「下載」圖示。

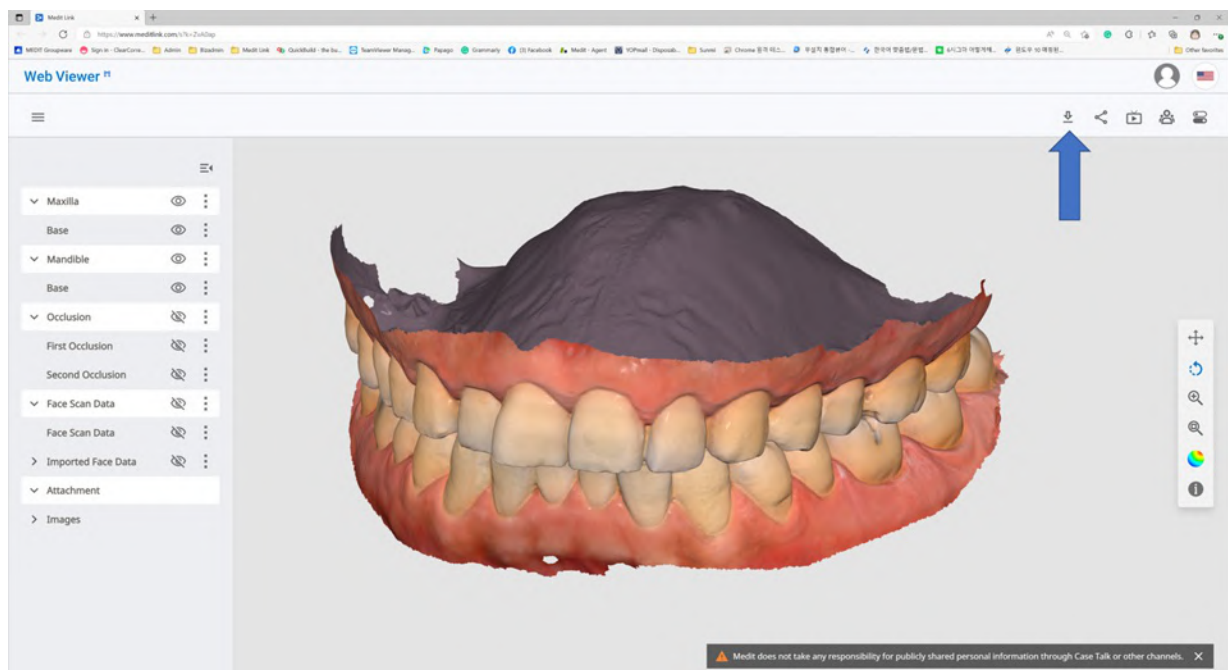

1. 點擊「下載」



2. 從下載對話方塊中選擇網格格式。

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. 隨後點擊「確定」。

112

訂購/管理訂單

您可以通過從連接程式所獲取的數據及由使用者所附加的數據來輕鬆地訂購案例。

訂購案例

您可以在Case Box中向您的合作夥伴下訂單。

1. 點擊「訂單」按鈕。
2. 查看您的訂單所需的資訊。

The screenshot shows the 'Order' form with the following details:

- Order Form Fields:**
 - Partner:** WonhoonChoi_Lab_Stage
 - Case Name:** mandibular movement - Clone - Clone
 - Patient Name:** Test Occlusion
 - Requested Delivery Date:** 2023-04-13
 - Delivery Time:** AM 8:00 to PM 8:00, currently set at 8:15.
 - Share patient information:** ☒
 - Tags:** A text area with a placeholder: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
 - Include all occlusion relationships in the order:** ☒
 - Include Tags In The Order:** ☒
- Partner Information Card:**
 - WonhoonChoi_Lab_Stage**
 - Seoul, KR
 - [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 - 01026088546

3. 選擇一個合作夥伴。
4. 從「訂單列表」索引標籤中查看產品資訊。
 - 您可選擇是否共享患者的姓名。
5. 從「檔案列表」索引標籤中查看要訂購的檔案。
6. 輸入您所需的交付日期。
 - 預設值為訂單日期後7天。
7. 您可以向您的合作夥伴添加備註及標籤以描述一些具體的細節問題。
8. 當掃描App生成了多個咬合結果時，您可通過勾選「訂購所有咬合關係」來一次性發送所有咬合結果。
9. 繼續進行訂單

確認訂單 (In Box)

- 收到訂單時直接接受。
- 已接受的訂單將轉至Work Box。

取消的訂單 (Order Box)

- 您可以在您的合作夥伴接受前取消訂單。
- 取消的案例可以被重新訂購。

拒絕訂單 (In Box)

- 您可以拒絕收到的訂單。
- 拒絕的案例可以被重新訂購。

查看已訂購案例

您可以從診所帳戶的Order Box中查看您已訂購案例的詳細資訊。您也可以技工所帳號的In Box中查看所收到的案例。

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

訂單資訊	訂單中可包含的資訊如下所示：訂單ID/患者姓名/帳戶名稱/掃描日期/訂單日期/交付日期/交付截止日期/備註。 您可以查看已訂購產品及交付資訊的詳細資訊。
訂單列表	訂單列表顯示已訂購產品的詳細資訊。
發貨	輸入/查看運送資訊。

輸入運送資訊 (In Box)

輸入已完成案例的運送資訊並開始進行運送。

1. 單擊運送索引標籤。
2. 輸入運送資訊，然後單擊「註冊」。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. 所輸入的資訊將隨即被發送給您的合作夥伴。

管理交付日期

您可以在下單時設定預計交付日期，然後該資訊將被發送給您的合作夥伴。

設定「請求的交付日期」(診所帳戶)

- 當從Case Box訂購時，您可以輸入「請求的交付日期」。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- 預設值為訂購日期之後7天。
- 輸入您想要收到產品的日期/時間並進行訂購。
- 您可以使用滑桿來輕鬆設定時間。

設定「預計交付日期」(技工所帳戶)

- 您可以從In Box對所訂購的案例輸入「預計交付日期」。

1. 查看合作夥伴的請求的交付日期，使用「編輯」按鈕來重新安排時間。



2. 輸入「預計交付日期」要考慮實際的工作日。您也可以在必需要時進行備註。
3. 點擊「應用」。

4. 預計交付日期與備註將連同訂單被一併發送。
 - 您可以在Order Box中查看日期及備註。
 - 您可以更改「預計交付日期」，更變更資訊將被發送給您的合作夥伴。
5. 您可以使用「歷史記錄」按鈕來查看案例記錄。



完成案例

完成 (Work Box/In Box)


所有任務結束後，點擊「完成」即可完成該案例。

從「案例詳細資訊」頁面完成案例

您可以在「打開」或「重新掃描」按鈕的右側找到三點圖示。




點擊該圖示並選擇「Done」，即可完成工作

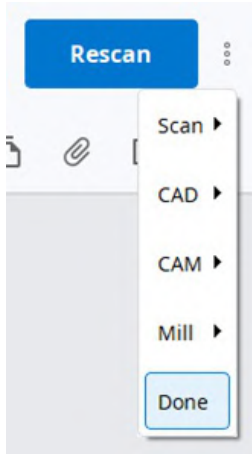

從「案例列表」中完成對多個案例的操作

1. 前往Work Box。
2. 選擇要完成的所有案例。

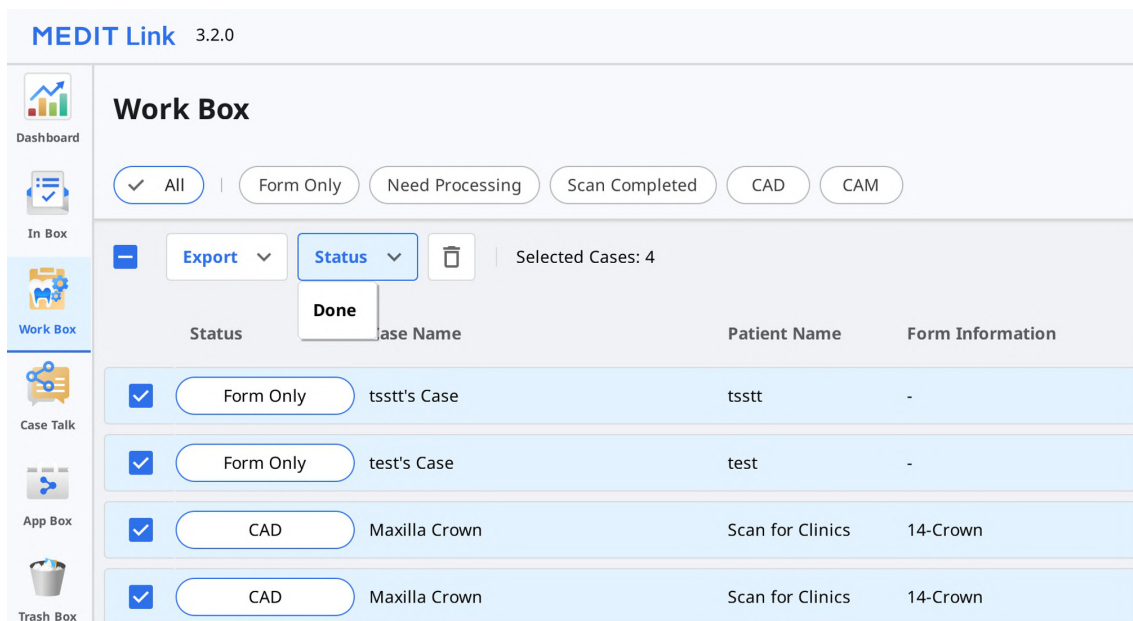


3. 點擊「狀態」並選擇「Done」。

完成 (Case Box/Order Box)

當技工所完成案例操作後，診所需確認以結束整個訂購流程。

在技工所完成其操作後，診所可以在Order Box中看到「確認交付」按鈕。


點擊該按鈕，整個訂購流程便將結束，並且案例狀態也將變為「Case Completed」。

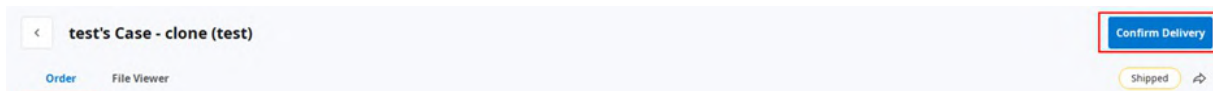

在Case Box中結束對未訂購案例的操作

對於未向技工所訂購的案例，您可以在Case Box中結束相關操作。

1. 前往「Case Box」。
2. 選擇您要完成操作的案例。

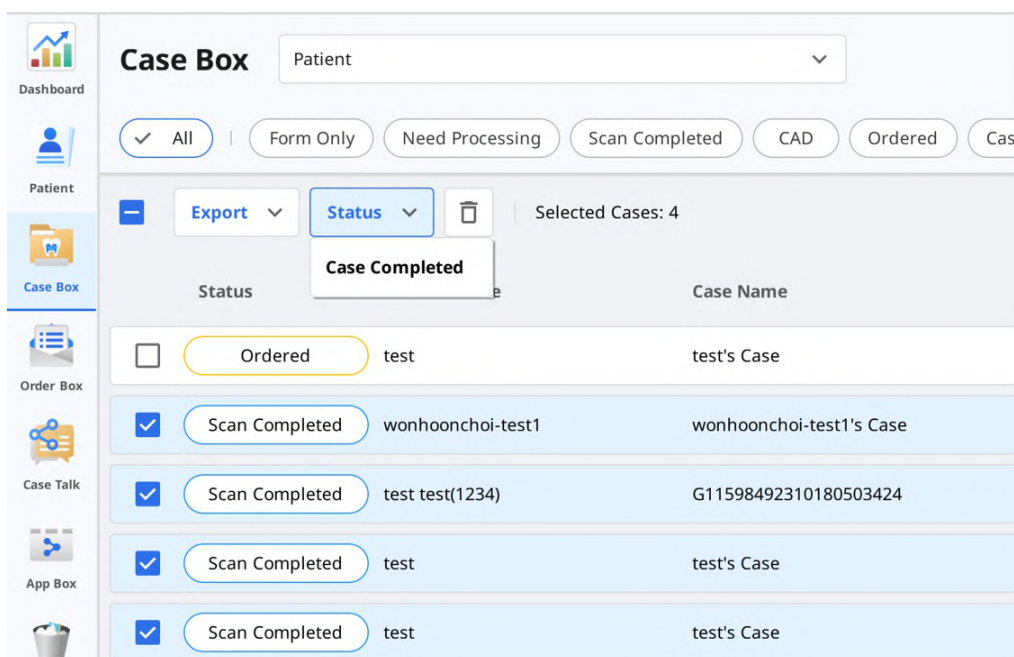

3. 點擊「狀態」並選擇「Case Completed」。

使用標籤來溝通

您可以使用索引標籤來為您的案例添加附加資訊並將其發送給您的合作夥伴。

創建新案例時添加索引標籤

您可以在您創建新案例或編輯案例資訊時輸入索引標籤。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

您可以輕鬆搜尋並選擇您之前使用過的索引標籤。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

訂購時添加索引標籤

訂購時您可以在「訂單」對話方塊中查看並編輯索引標籤。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

查看案例詳細資訊上的標籤

