

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Giới thiệu	7
Medit Link	7
Tổng quan về dịch vụ	7
Dịch vụ đám mây	8
Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng	8

Medit Link > Installation

Yêu cầu hệ thống	9
Yêu cầu hệ thống đối với Windows	9
Yêu cầu hệ thống đối với macOS	9
Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web	9
Đề xuất cho trình duyệt	9
Tối thiểu đối với thiết bị di động	9
Cài đặt trên Windows	10
Cài đặt trên macOS	13

Medit Link > Getting Started

Đăng ký & Đăng nhập	17
Trang web Medit Link	17
Đăng ký	17
Trang đăng nhập và chào mừng	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
Tổng quan về Dashboard	21
Medit Insights	21
Đăng ký Medit Insights	22
Hủy đăng ký Medit Insights	23
Patient	24
Tìm kiếm bệnh nhân	24
Case Box/Work Box	25
Lọc ca	25
Lọc theo bệnh nhân	25
Lọc theo trạng thái	26
Lọc theo khoảng thời gian	27
Lọc theo tìm kiếm	27
Chi tiết ca	27
Order Box/In Box	29
Chi tiết đơn hàng	29
Tab trong Order Box/In Box	29
Case Talk	30
Tạo một Case Talk	30
Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ	31
Chi tiết Case Talk	33
Web Viewer	33
Chú thích	34
Bình luận	35

Chia sẻ màn hình theo thời gian thực	36
Cây dữ liệu	36
Kiểm soát cây dữ liệu	36
Điều khiển mô hình 3D	37
Partners	38
Tìm kiếm đối tác	38
Danh sách đối tác của tôi	38
Mời đối tác	39
Membership	40
Thành viên	40
Gói	40
Bộ nhớ đám mây	41
Đăng ký	41
Hủy đăng ký	43
Thông tin thanh toán	44
Cách thêm phương thức thanh toán	45
Cách thay đổi phương thức thanh toán	46
Đổi quà	47
Đăng ký mã đổi quà	47
Kích hoạt mã đổi quà	48
My Info	49
Tài khoản của tôi	49
Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)	49
Máy quét của tôi	50
Menu khác	51
Thông báo & Cập nhật	51
Website liên quan	51
Tải xuống ứng dụng Medit Link	51

Medit Link > Medit Link App

Tổng quan	53
Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.	53
Thanh tiêu đề	54
Thông tin tài khoản	54
Thông báo	54
Thông báo & Cập nhật	55
Cài đặt	55
Trạng thái mạng	56
Cài đặt	58
Chung	58
Quản lý lưu trữ	59
Đặt khoảng thời gian	60
Bộ nhớ cục bộ	60
Bộ nhớ đám mây	60
Cài đặt chương trình được kết nối	61
Tùy chọn xuất	61
Công cụ chuyển đổi ca	63
Xuất ca	64
Nhập ca	65
Tùy chọn proxy	66
Giới thiệu	67
Hướng dẫn sử dụng	67
Menu	68

Dashboard	68
Patient	68
Thêm bệnh nhân mới	69
Xóa bệnh nhân	69
Gộp bệnh nhân	69
Case Box/Work Box	70
Tab trong Case Box/Work Box	70
Chức năng trong Case Box/Work Box	71
Order Box/In Box	72
Tab trong Order Box/In Box	73
Case Talk	73
App Box	74
All	74
Medit Apps	74
Đã tải về	75
Trash Box	75
Case Synchronization Manager	75
Tải lên	76
Tải xuống	76
Website liên quan	77
File Viewer	78
Cây dữ liệu	78
Công cụ điều khiển mô hình	78
Điều khiển mô hình 3D	78
Điều khiển hình ảnh 2D	79
Công cụ chức năng	80
Chụp ảnh và ghi chú	80
Chụp chỉnh nha	80
Làm đầy lỗ	81
Cắt	81
Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cắn	84
Chuyển động hàm dưới	85
Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer	86
Cách quản lý nhiều kết quả	86
Tùy chọn hiển thị	88
Bộ lọc trạng thái	88
Loại chế độ xem	89
Nhóm	89
Sắp xếp	89
Lọc và Tìm kiếm	91
Lọc theo bệnh nhân	91
Lọc theo ngày	92
Chức năng tìm kiếm nâng cao	92

Medit Link > Workflow

Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca	94
Tạo ca	94
Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)	94
Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)	95
Chỉnh sửa ca	95
Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)	95
Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)	96
Sao chép ca	97

Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)	97
Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)	97
Xóa ca	98
Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)	98
Thông tin mẫu	99
Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box	99
Nhập vào Tab Mẫu	99
Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box	99
Nhập vào Tab Mẫu	99
Nối răng thành cầu	99
Cài đặt tùy chọn quét	100
Medit Scan for Labs	100
Tùy chọn chung	100
Tùy chọn theo răng	100
Thêm vào yêu thích	100
Thêm vào yêu thích	100
Quản lý mẫu yêu thích	101
Thực hiện quét/CAD	102
Quy trình quét	102
Quy trình CAD	102
Sử dụng ứng dụng hỗ trợ	102
Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ	102
Quản lý trình khởi chạy ứng dụng	102
Trình khởi chạy nhanh	103
Tắt cả ứng dụng	103
Nhận tệp kết quả	104
Xuất tệp kết quả quét	104
Xuất tệp kết quả từ danh sách ca	105
Xuất tệp kết quả từ File Viewer	106
Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu	108
Xuất danh sách ca dưới dạng CSV	110
Xuất đường viền dấu	111
Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc	111
Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp	111
Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link	112
Case Box/Work Box	112
Web Viewer	113
Đơn hàng/Quản lý đơn hàng	115
Đặt hàng ca	115
Xác nhận đơn hàng (In Box)	115
Hủy đơn hàng (Order Box)	116
Từ chối đơn hàng (In Box)	116
Kiểm tra ca đã đặt hàng	116
Nhập thông tin vận chuyển (In Box)	116
Quản lý ngày giao hàng	117
Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)	117
Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)	117
Hoàn tất ca	118
Hoàn thành (Work Box/In Box)	119
Hoàn tất ca từ thông tin chi tiết ca	119
Hoàn tất nhiều ca từ danh sách ca	119
Hoàn thành (Case Box/Order Box)	119
Hoàn tất ca chưa đặt hàng trong Case Box	120

Giao tiếp bằng tag	121
Thêm tag khi tạo một ca mới	121
Thêm tag khi đặt hàng	122
Kiểm tra tag để biết chi tiết ca	122

Giới thiệu

Medit Link

Medit Link là công cụ cộng tác được thiết kế để thúc đẩy giao tiếp giữa các phòng khám và phòng lab nhằm cung cấp quy trình làm việc tối ưu cho mỗi bên.

Medit Link cung cấp các tính năng khác nhau dựa trên loại và quyền của từng tài khoản. Chương trình cung cấp giao diện người dùng rất thân thiện để quản lý quy trình làm việc, từ quét bằng máy quét miệng và máy quét mô hình, đặt hàng ca cho đến thiết kế và sản xuất bộ phận giả.

Medit Link bao gồm một dịch vụ web và một ứng dụng máy tính.

Tổng quan về dịch vụ

		Web	Ứng dụng
		• Đăng ký và quản lý tài khoản • Tìm kiếm và quản lý đối tác • Chi sẻ ca qua Web Viewer với liên kết chia sẻ • Truy cập vào ca do Ứng dụng tạo • Quản lý đơn hàng	• Nhập thông tin mẫu • Quét • Quản lý đơn hàng • Liên kết với CAD • Quản lý bệnh nhân
Phòng khám	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng khám cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét, đặt hàng và quản lý bệnh nhân. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Phòng lab	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng lab cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét và quản lý đơn hàng. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Dịch vụ đám mây

Medit Link hỗ trợ tự động tải lên/tải xuống cơ sở dữ liệu và tệp thông qua AWS (Amazon Web Services).

Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây sẽ tự động đồng bộ hóa với máy tính của nhiều người dùng trong tổ chức để họ có thể truy cập vào cùng một dữ liệu từ mọi máy tính vào mọi lúc. Tính năng sao lưu và khôi phục dựa trên đám mây giúp bảo vệ tất cả dữ liệu. Tính năng này giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả trong trường hợp mất dữ liệu do máy tính bị lỗi đột ngột.

Dịch vụ đám mây cho phép nha sĩ và phòng lab đối tác nhanh chóng chia sẻ dữ liệu mà không phải đối mặt với những rắc rối khi gửi email hoặc chuyển bản quét theo cách thủ công. Tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin bệnh nhân, đều được mã hóa, lưu trữ và truyền đi một cách an toàn. Medit tuân thủ theo luật và quy định y tế như HIPAA và GDPR.

Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng

Medit Link cung cấp hệ thống đặt hàng riêng.

- Medit Link cho phép người dùng thiết lập quan hệ đối tác giữa nha sĩ và phòng lab nha khoa cũng như chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
- Bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái đặt hàng.

Yêu cầu hệ thống

Lưu ý

Vui lòng tham khảo yêu cầu hệ thống của Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs nếu bạn muốn sử dụng phần mềm quét với máy quét của mình.

Yêu cầu hệ thống đối với Windows

	Máy tính xách tay & Máy tính bàn
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz hoặc cao hơn
RAM	16 GB trở lên
Đồ họa	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) hoặc cao hơn / hoặc card màn hình AMD tương đương
HĐH	Windows 10 64 Bit (không hỗ trợ 32 Bit) hoặc cao hơn

Yêu cầu hệ thống đối với macOS

	Mac
Bộ xử lý	M1 8-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core
RAM	16 GB trở lên
HĐH	Monterey 12 trở lên

Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web

Đề xuất cho trình duyệt

	Trình duyệt
Máy tính	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Tối thiểu đối với thiết bị di động

	Android	iOS
Thiết bị	Galaxy S7 tương đương hoặc cao hơn	iPhone 7 tương đương hoặc cao hơn
HĐH	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB trở lên	2 GB trở lên
AP	Snapdragon 710 trở lên	A10 Fusion

Cài đặt trên Windows

Medit Link được cài đặt trọn gói cùng các chương trình thu thập dữ liệu quét - Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs.

1. Chạy Medit_LinkSetup.exe.
2. Chọn ngôn ngữ để cài đặt.
3. Chọn thư mục để cài đặt Medit Link. Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của giấy phép rồi nhấp vào "CÀI ĐẶT".

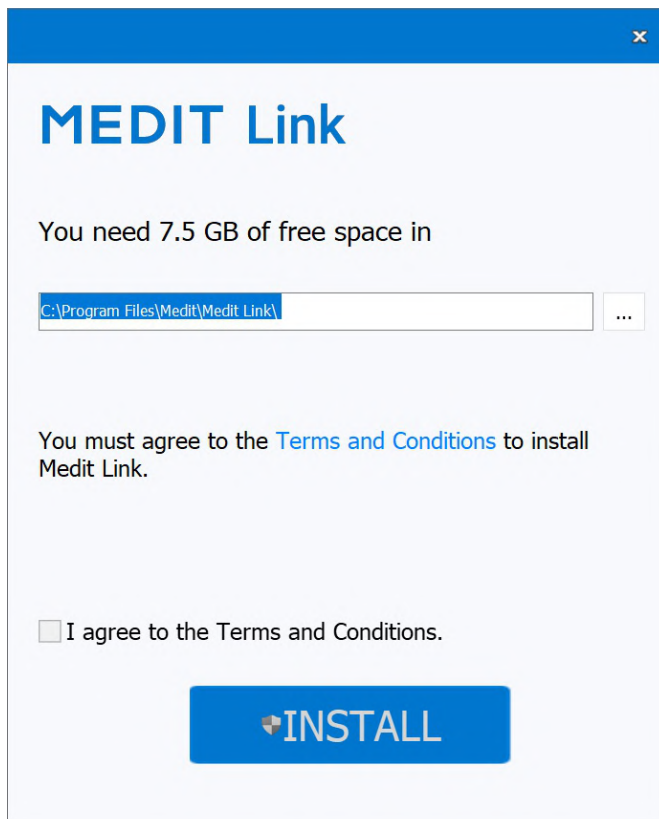

4. Đảm bảo ngắt kết nối cáp máy quét khỏi máy tính trước khi sang bước tiếp theo. Nếu máy quét vẫn đang kết nối với máy tính của bạn, quá trình cài đặt có thể không tiến hành được.
5. Chương trình sẽ được cài đặt tự động và có thể mất vài phút. Không tắt hoặc ngắt nguồn máy tính cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.



6. Vui lòng khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất cài đặt. Bạn có thể tiếp tục mà không cần khởi động lại máy tính nếu bạn không có máy quét.




Lưu ý

Nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất, máy quét có thể không hoạt động bình thường được.


Cài đặt trên macOS

Medit Link được cài đặt cùng với Medit Scan for Clinics trong một gói.


1. Chạy Medit_Link_x.x.x.pkg và nhấp vào "Tiếp tục".

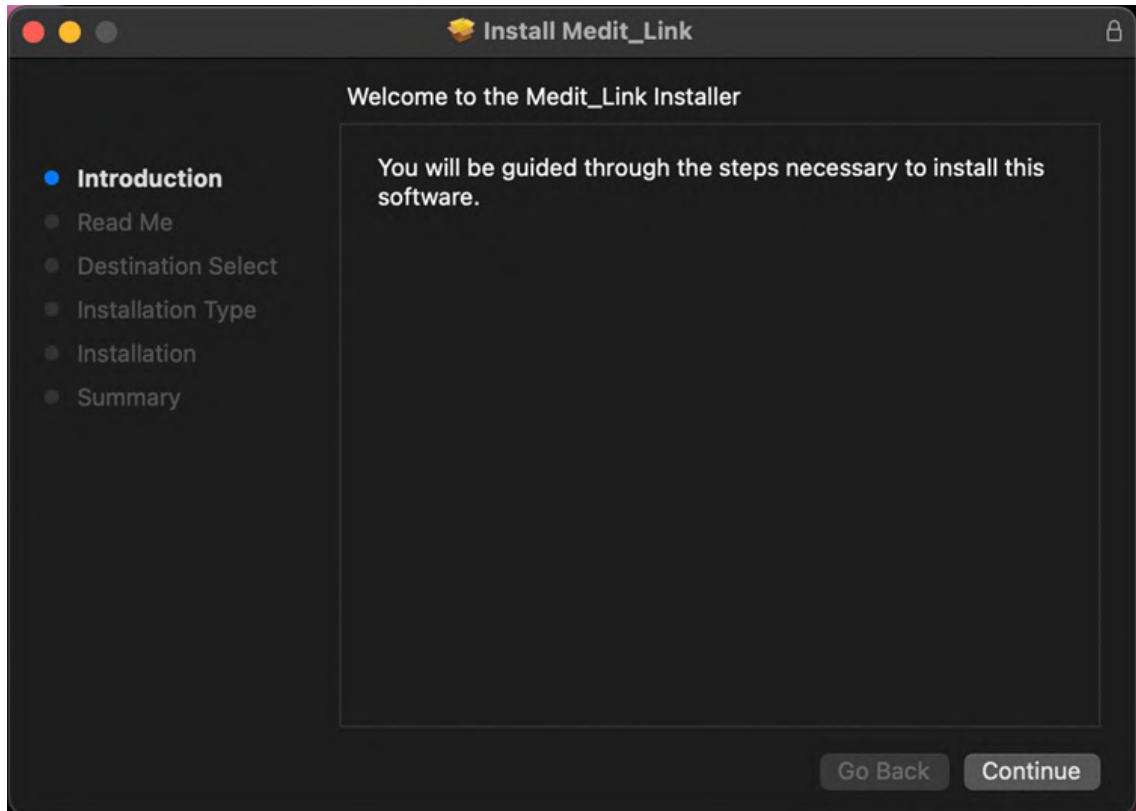


2. Đọc Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và nhấp vào "Tiếp tục".

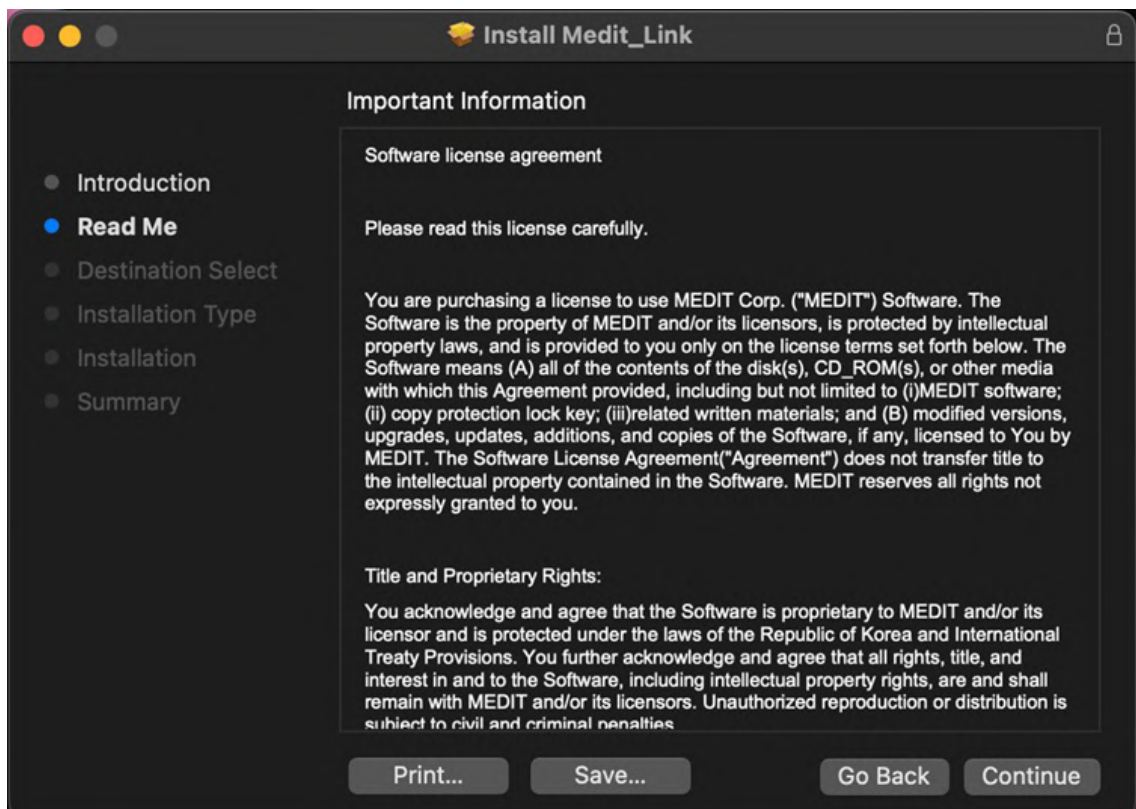

3. Chọn ổ đĩa để cài đặt và nhấp vào "Tiếp tục".

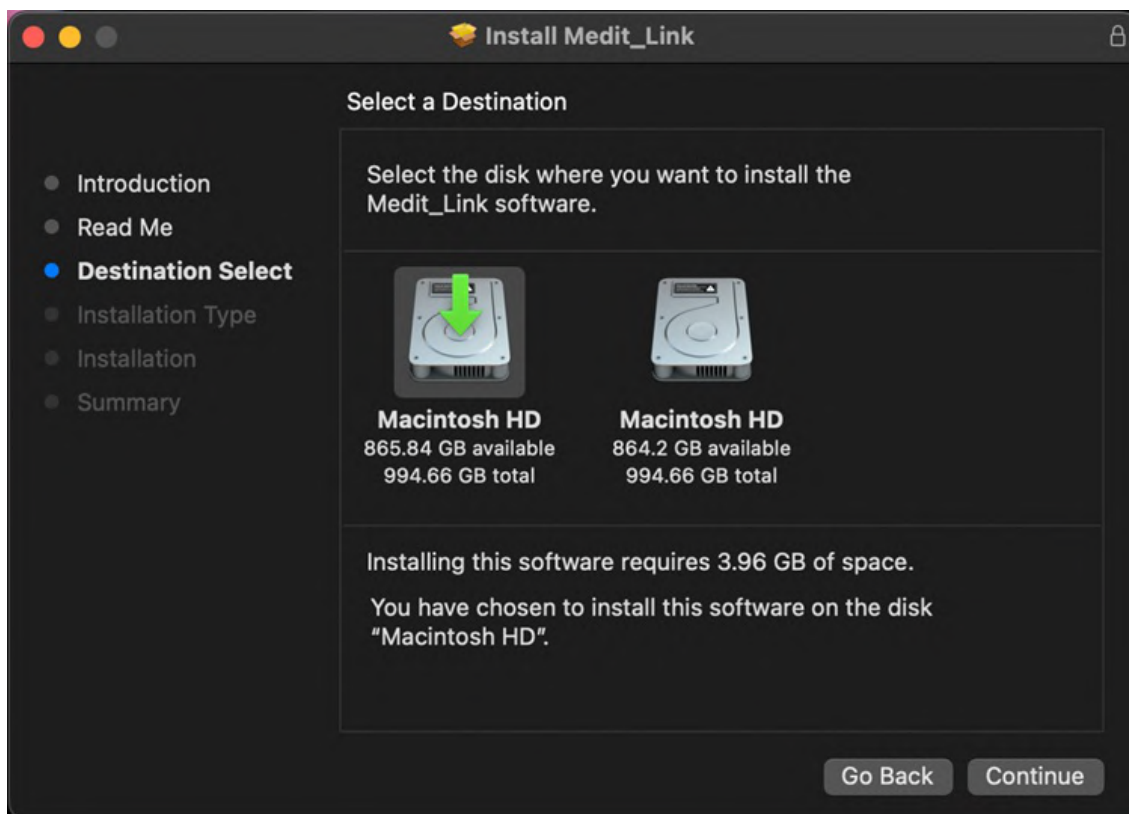


4. Nhấp vào "Thay đổi vị trí cài đặt..." để thay đổi đích cài đặt.

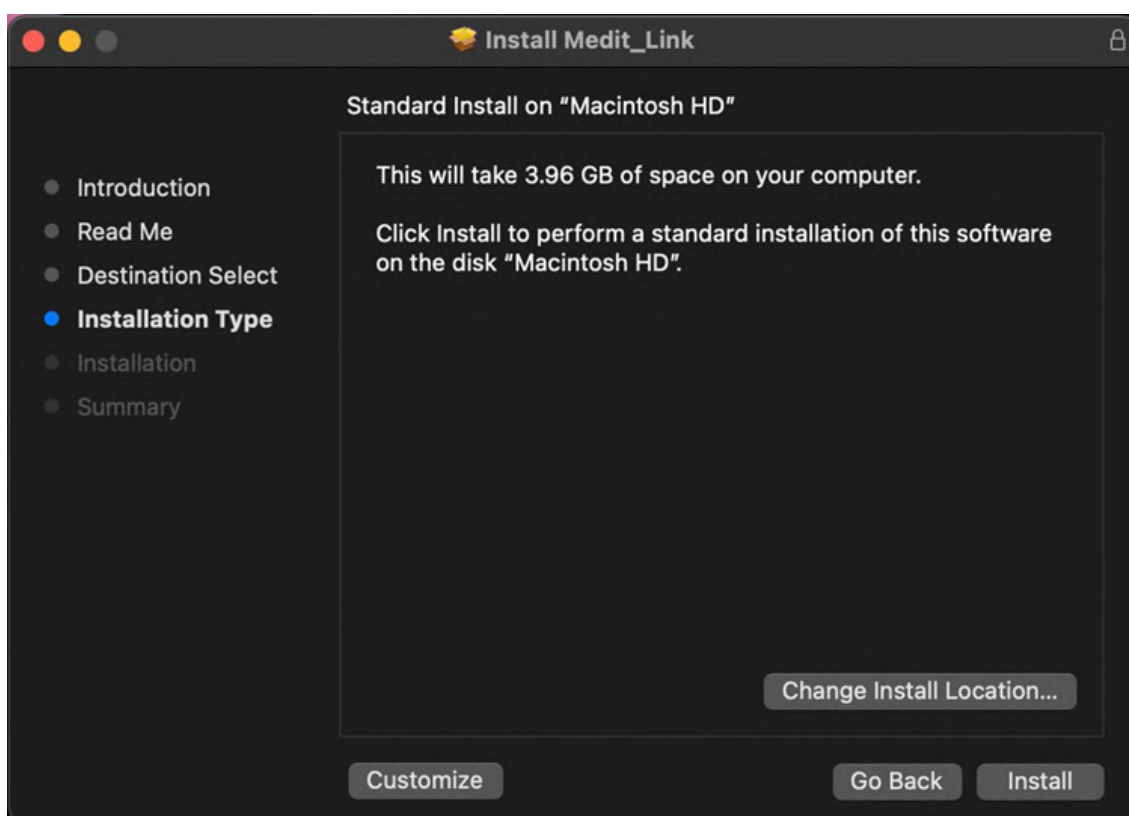


5. Nhấp vào "Cài đặt" và nhập mật khẩu máy Mac của bạn để cho phép cài đặt nếu được yêu cầu.



6. Đợi đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

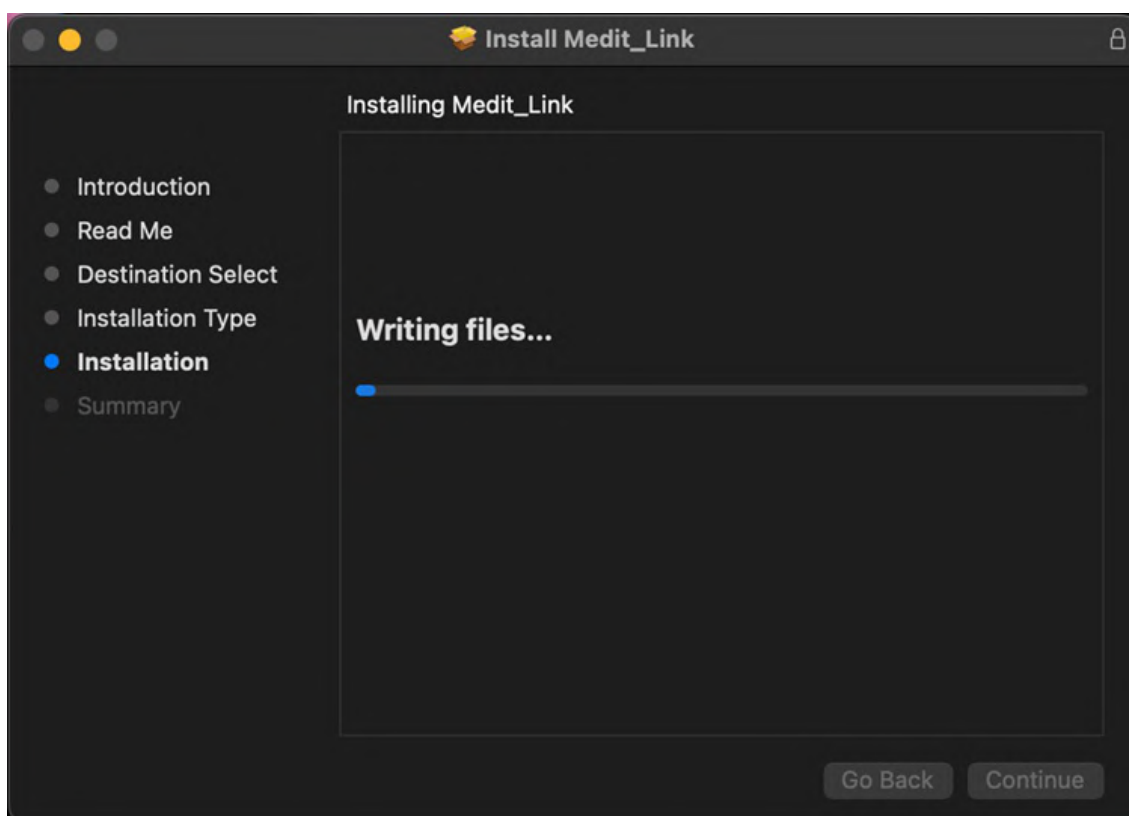


7. Nhấp vào "Đóng" để thoát khỏi cửa sổ cài đặt.

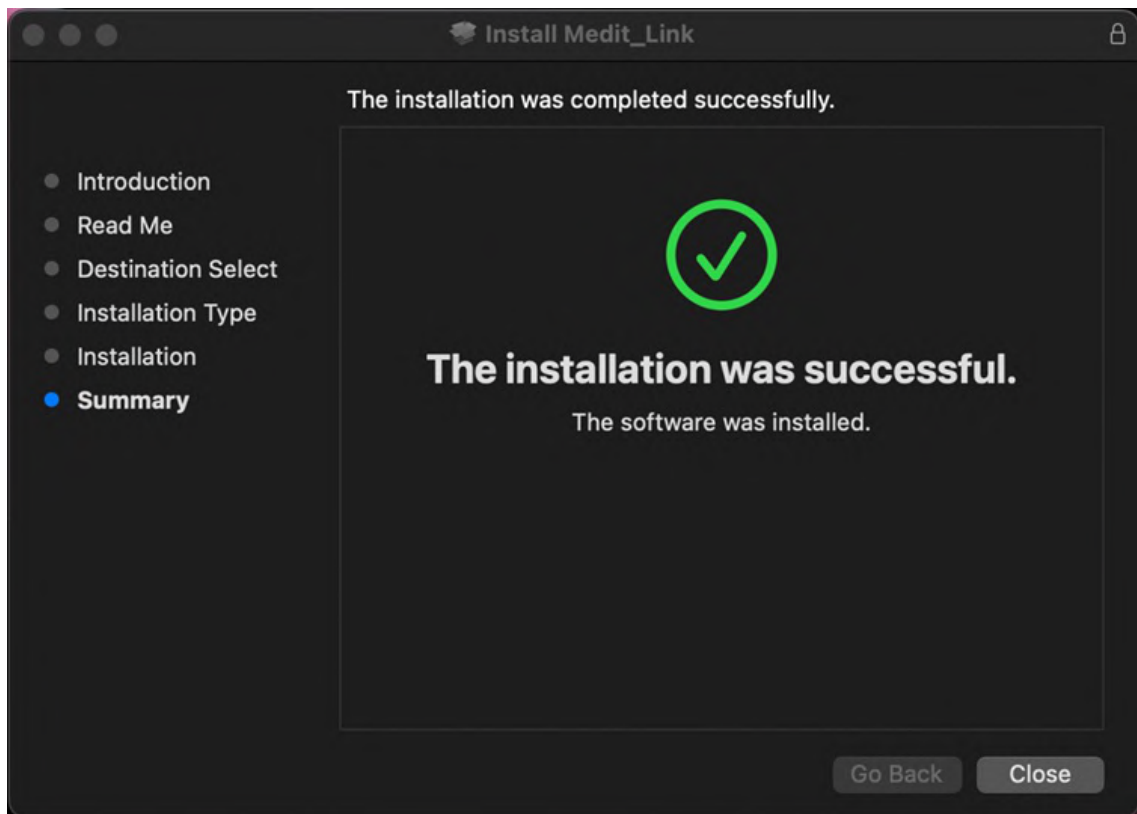

Đăng ký & Đăng nhập

Trang web Medit Link

Đăng ký dịch vụ Medit Link tại www.meditlink.com.

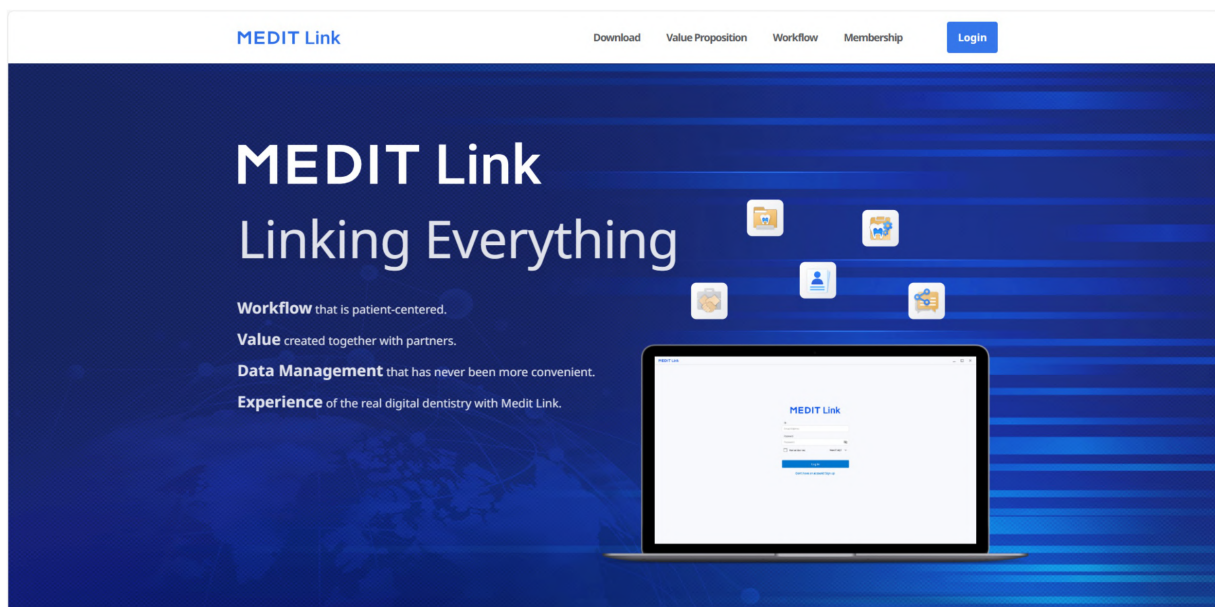

Lưu ý

Đăng ký Medit Link China tại www.meditlink.cn.

Đăng ký

Bạn cần đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ Medit Link. Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Medit Link sau khi tạo tài khoản phòng khám hoặc phòng lab.

Người dùng có thể chọn một trong bốn loại tài khoản sau để đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ. Tùy vào loại tài khoản mà người dùng có các tính năng và đặc quyền đầy đủ hoặc bị hạn chế.

- Phòng khám - Quản trị viên
- Phòng khám - Thành viên
- Phòng lab - Quản trị viên
- Phòng lab - Thành viên

Quản trị viên thường là người đại diện cho tổ chức và có toàn quyền truy cập tất cả các chức năng và dịch vụ của Medit Link. Trái lại, tài khoản thành viên bị hạn chế quyền truy cập.

Để đăng ký thành viên, hãy thực hiện như sau:

1. Nhấp vào "Chưa có tài khoản? Đăng ký." trên trang đăng nhập.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) ▼

2. Sau khi đọc mô tả, hãy nhấp vào nút "Đăng ký" loại tài khoản bạn mong muốn.

Create Your Medit Link Account



Clinic

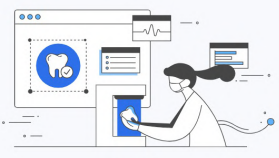

Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Mẫu đăng ký sau xuất hiện.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

View

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Nhập tên phòng khám hoặc phòng lab, sau đó, tùy vào loại tài khoản bạn mong muốn, hãy thực hiện như sau:

- Nếu bạn đăng ký với tư cách quản trị viên, hãy nhấp vào "Kiểm tra khả năng sử dụng" để xem tên đã nhập có sẵn không.
- Nếu bạn đăng ký với tư cách thành viên, hãy nhấp vào "Tìm kiếm". Bạn chỉ có thể đăng ký sau khi quản trị viên đã đăng ký tổ chức của bạn.

5. Điền những thông tin còn lại của mẫu đăng ký và nhấp vào "Đăng ký".

Lưu ý

Nếu trong quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị thì bạn sẽ nhận được thông tin hữu ích về sản phẩm và dịch vụ từ Medit.

6. Một email xác minh sẽ được gửi cho bạn.

7. Để hoàn tất quá trình đăng ký, hãy xác minh địa chỉ email bằng liên kết bạn nhận được.

Trang đăng nhập và chào mừng

1. Nhập địa chỉ email và mật khẩu trên trang đăng nhập và nhấp vào "Đăng nhập".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

- Hộp thoại sau sẽ xuất hiện nếu bạn chưa điền thông tin doanh nghiệp.

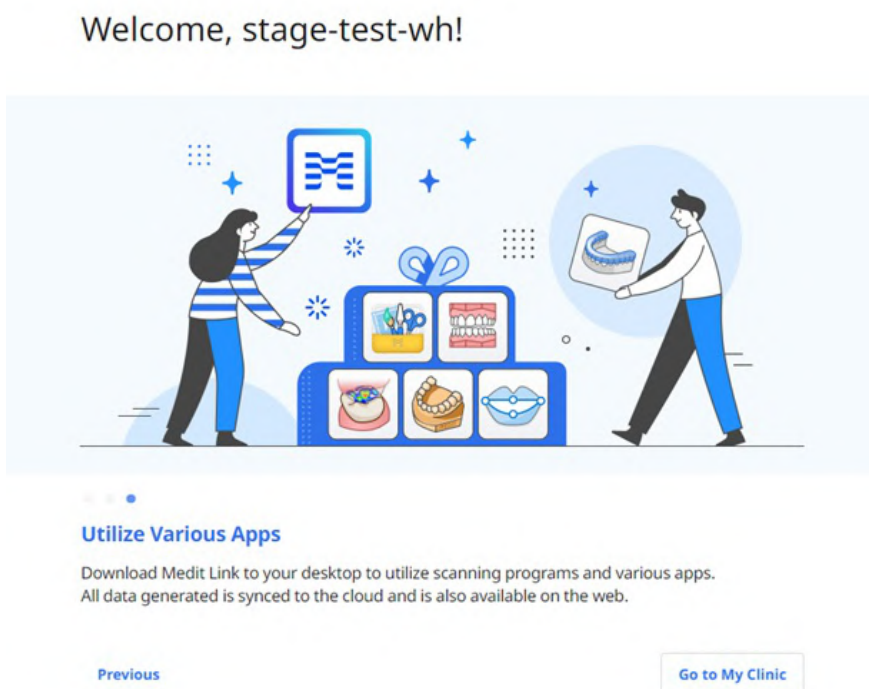

Lưu ý


Để sử dụng các dịch vụ Medit Link, quản trị viên của bạn phải nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab.

- Nhấp vào nút "Truy cập Phòng khám của tôi" hoặc "Truy cập Phòng lab của tôi" và nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab, bao gồm tên doanh nghiệp, ảnh đại diện/logo, dịch vụ bạn cung cấp, địa chỉ văn phòng, số văn phòng, v.v.
- Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập trên trang chào mừng bất cứ lúc nào trên tab My Info > Phòng khám của tôi hoặc Phòng lab của tôi trong Medit Link Web.

Dashboard

Tổng quan về Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

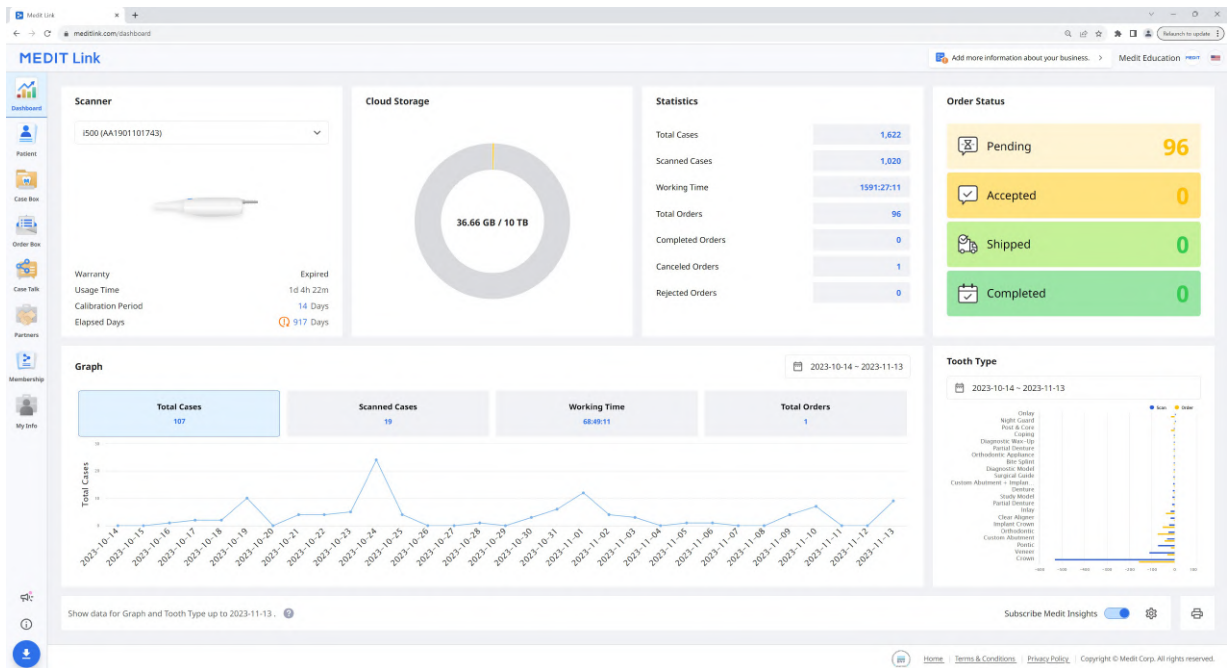

Đồ thị và biểu đồ trong phần dashboard hiển thị số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trong Medit Link.

Máy quét	Cung cấp thông tin về các máy quét đang hoạt động, bao gồm bảo hành, thời gian sử dụng máy quét, chu kỳ hiệu chuẩn và thời gian hiệu chuẩn đã trôi qua.
Bộ nhớ đám mây	Hiển thị tổng dung lượng của đám mây và dung lượng đã sử dụng.
Thống kê	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái công việc.
Trạng thái đơn hàng	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái đơn hàng.
Đồ thị	Vẽ đồ thị thông tin công việc theo thời gian.
Loại răng	Cung cấp số liệu thống kê về số lần quét và số lượng đơn hàng theo thông tin điều trị.


Medit Insights

Medit Insights là dịch vụ báo cáo giúp bạn phân tích số liệu thống kê về hoạt động sử dụng.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Medit Insights

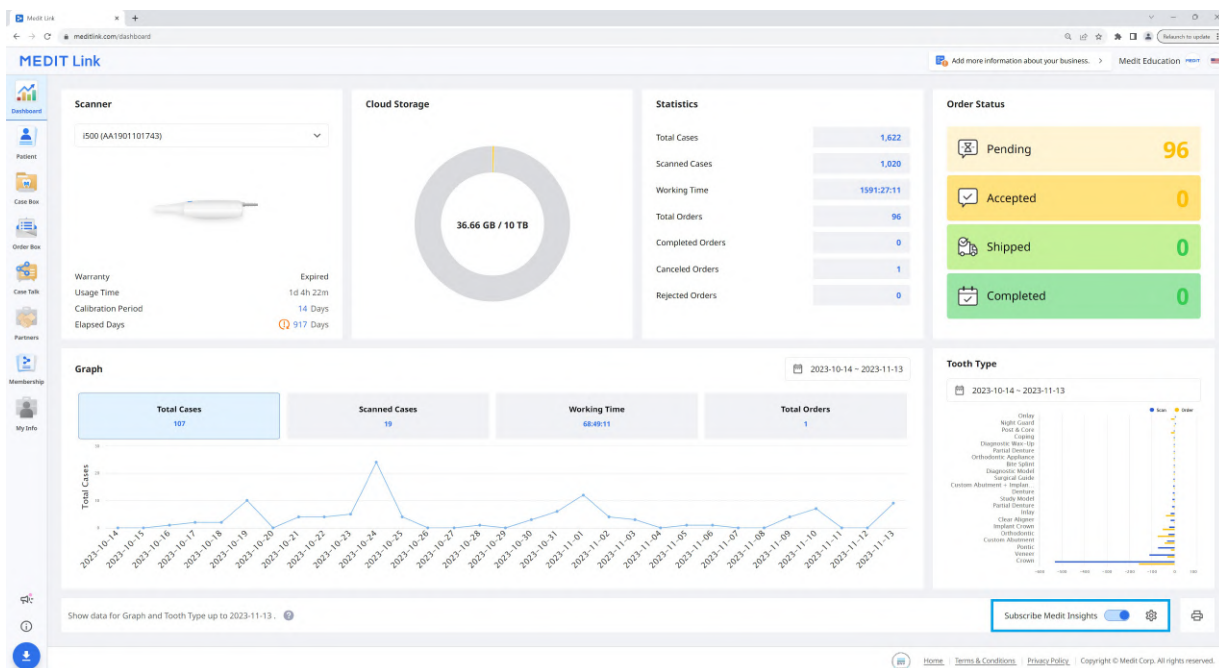

Đăng ký Medit Insights

Bạn có thể nhận được email báo cáo vào ngày thứ hai hàng tháng. Không cần thực hiện quy trình đăng ký bổ sung. Chỉ cần bật "Đăng ký Medit Insights".

Nếu bạn không sử dụng địa chỉ email bạn đã dùng cho tài khoản Medit Link, bạn có thể đặt một địa chỉ email khác để nhận Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒
Medit Link account

☐
Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Vào ngày thứ hai hàng tháng, bạn sẽ nhận được email chứa số liệu thống kê như hình bên dưới.

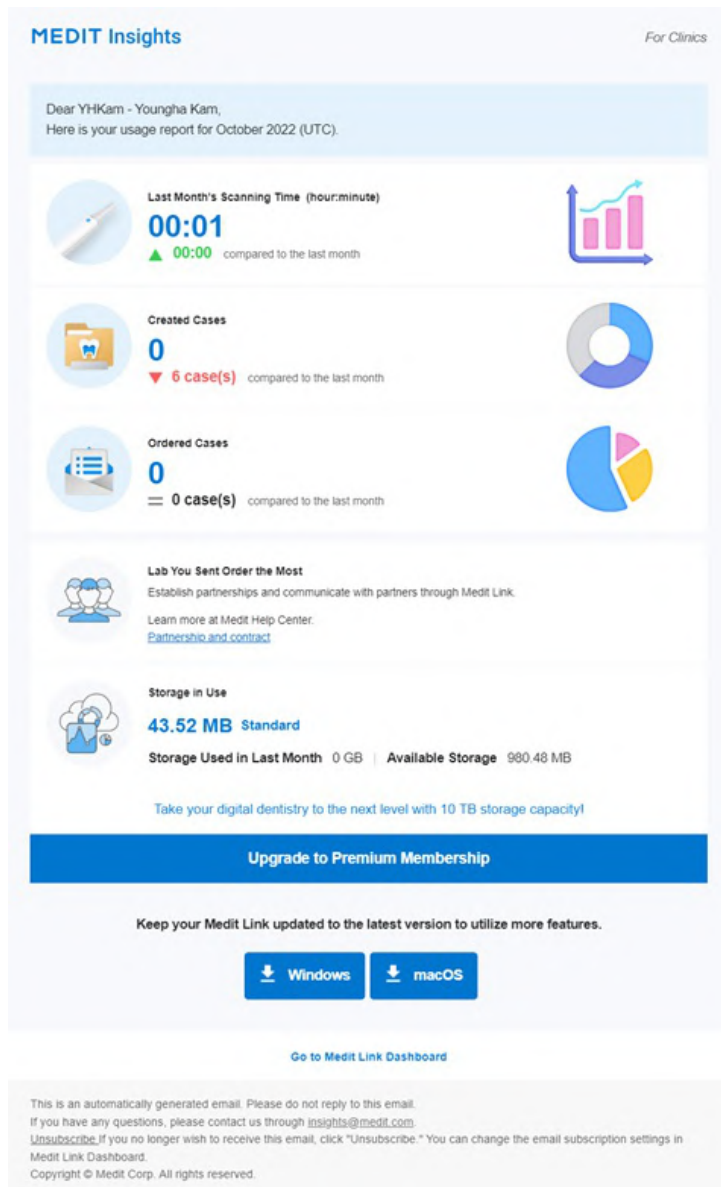

Biểu ngữ	Medit cung cấp các mẹo và thông tin hữu ích tại đây. * Nếu bạn không muốn xem biểu ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thỏa thuận marketing và khuyến mại trong My Info > Tài khoản của tôi.
Thông tin thống kê	Thông tin về số liệu thống kê được hiển thị, chẳng hạn như thời gian quét, ca đã tạo, phòng lab được đặt hàng nhiều nhất, v.v.
Tải xuống Medit Link	Nút này cung cấp liên kết tải xuống Medit Link.
Dashboard	Tất cả thông tin thống kê đều dựa trên thông tin tại Dashboard. Bạn có thể xem thêm chi tiết trong Dashboard.


Hủy đăng ký Medit Insights

Tắt "Đăng ký Medit Insights" trong Dashboard hoặc nhấp vào "Hủy đăng ký" trong email bạn nhận được.

Patient

Bạn có thể quản lý ca dựa theo tên bệnh nhân và ID bệnh nhân.


Tất cả bệnh nhân đã đăng ký qua ứng dụng Medit Link đều được hiển thị trong danh sách, giúp quản lý bệnh nhân và ca của họ dễ dàng hơn.

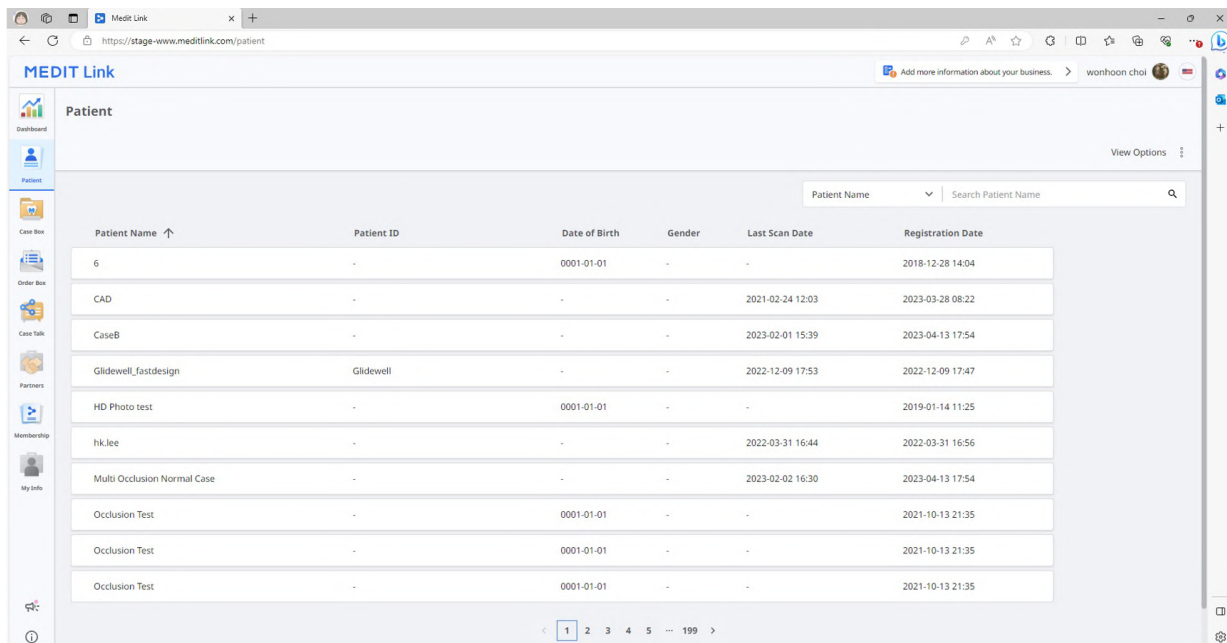

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Tìm kiếm bệnh nhân

1. Chọn tiêu chí tìm kiếm là Tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân từ menu thả xuống ở phía trên cùng bên phải danh sách bệnh nhân.

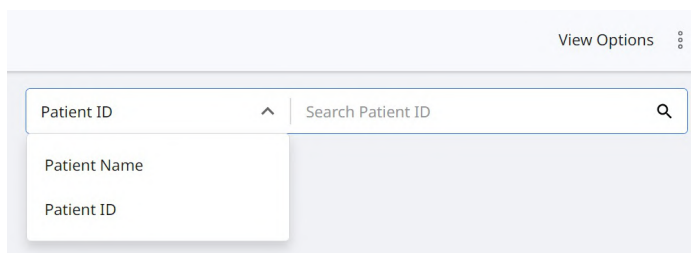

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Nhập tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân để tìm kiếm theo tiêu chí tìm kiếm đã chọn.
3. Danh sách chỉ hiển thị những bệnh nhân có tên hoặc ID bệnh nhân đã nhập.

Case Box/Work Box

Case Box (Phòng khám) hoặc Work Box (Phòng lab) hiển thị tất cả các ca do người dùng tạo trên ứng dụng Medit Link. Bạn có thể xem tệp qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng biệt.

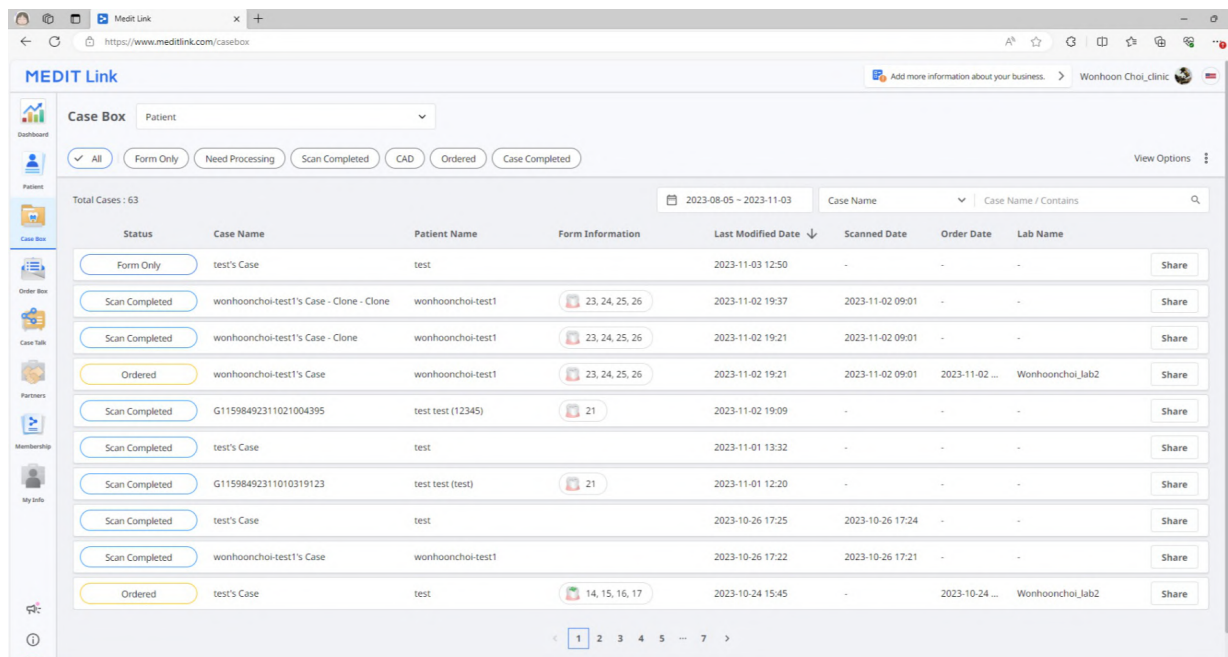


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is on the right. The main area displays 'Total Cases: 63' and a date range '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar for 'Case Name' is also present. The table below lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

Lọc ca


Lọc theo bệnh nhân

Bạn có thể lọc các ca theo bệnh nhân. Tính năng này hữu ích khi bạn tìm các ca cho bệnh nhân cụ thể.

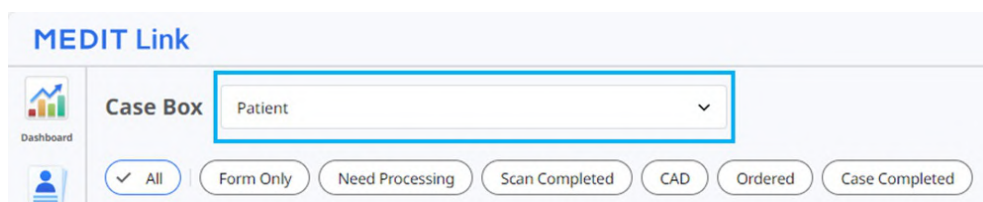

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is currently set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Nhập tên bệnh nhân vào trường tìm kiếm.

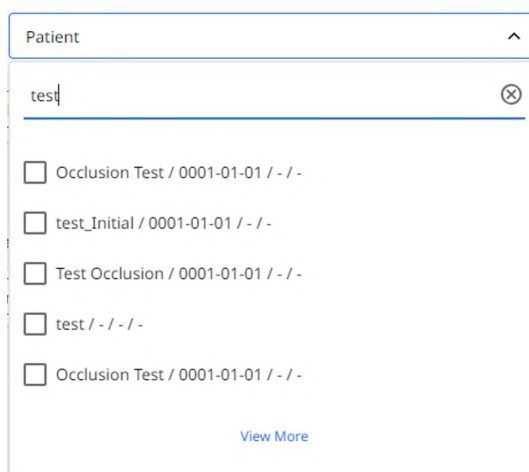

The screenshot shows the search dropdown menu. The search bar contains 'test'. Below the search bar is a list of patient names with checkboxes next to them:

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

At the bottom of the list is a 'View More' link.

2. Chọn bệnh nhân từ danh sách kết quả tìm kiếm.

3. Chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trong danh sách, giúp bạn dễ tìm được những ca cần xử lý hơn.

Lọc theo trạng thái

All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- Người dùng có thể nhấp vào trạng thái họ muốn xem. Trình duyệt sẽ chỉ hiển thị các ca có trạng thái đã chọn.
- Người dùng có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Các loại trạng thái sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Phòng lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Lọc theo khoảng thời gian

Bạn có thể lọc và hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.



2. Chọn phạm vi.

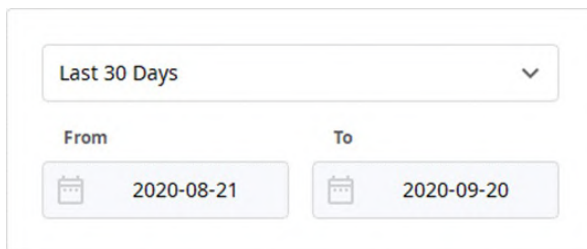


- Tất cả: Hiển thị tất cả các ca.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc để hiển thị các ca được sửa đổi trong khoảng thời gian đó.
- Hôm nay: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong hôm nay.
- Hôm qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối vào ngày hôm qua.
- 7 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 7 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- 30 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 30 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- 90 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong 90 ngày qua, ngoại trừ hôm nay.
- Tháng này: Hiển thị các ca trong tháng này.
- Tháng trước: Hiển thị các ca trong tháng trước.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Lọc theo tìm kiếm


Bạn có thể tận dụng các chức năng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng.

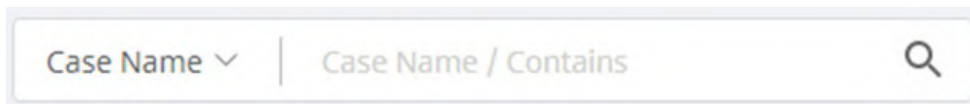

Các tùy chọn tìm kiếm sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab
Work Box (Phòng lab)	Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng

Chi tiết ca

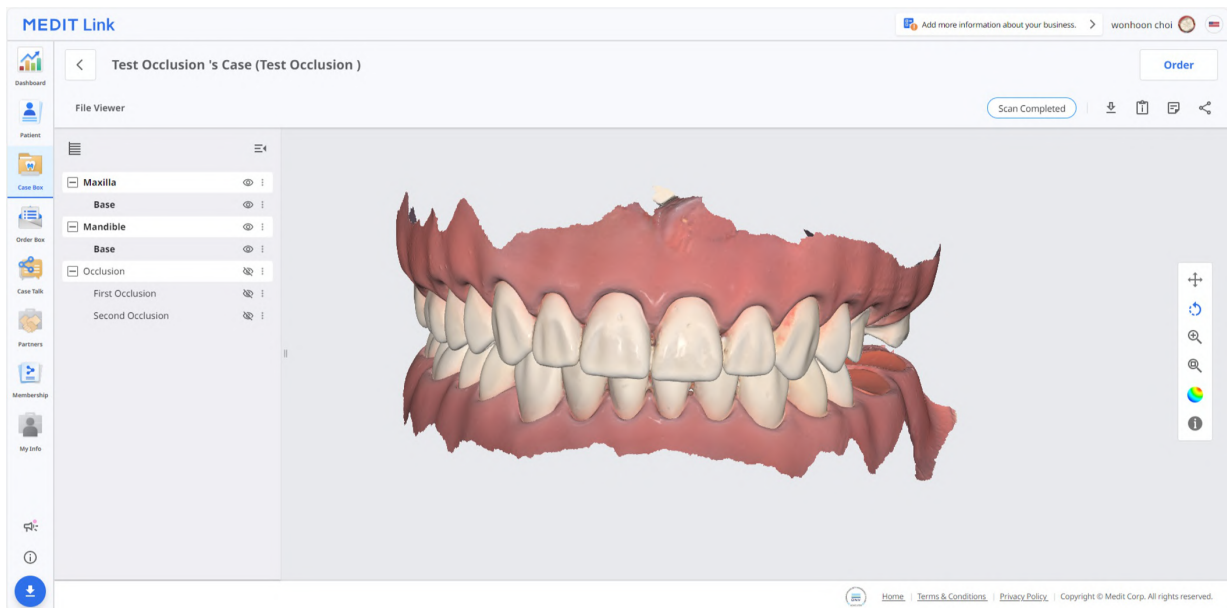

Các công cụ quản lý ca sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca	Hiển thị trạng thái của ca.
	Truy cập Order Box/In Box	Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Tải xuống	Tải tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.
	Ghi chú & Tag	Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.
	Chia sẻ	Tạo liên kết để chia sẻ. Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung.

Order Box/In Box

Order Box (Phòng khám) hoặc In Box (Phòng lab) hiển thị các ca đã đặt hàng trên ứng dụng Medit Link.

Chi tiết đơn hàng

The screenshot displays the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' page in the Medit Link application. The page is divided into two main sections: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' section contains a form with fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The 'File Viewer' section displays a table of order items.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

1. Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2. Cung cấp các chức năng quản lý đơn hàng (chấp nhận/hủy; giao/nhận).
3. Hiển thị các tab có sẵn: Đơn hàng, File Viewer
4. Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp: trạng thái ca, phím tắt để xem thông tin chi tiết, thông tin ca, ghi chú & tag, v.v.
5. Hiển thị thông tin chi tiết cho đơn hàng, bao gồm số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên đối tác, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao và ghi chú & tag.
6. Hiển thị thông tin sản phẩm đã đặt hàng và trạng thái giao hàng.


Tab trong Order Box/In Box

Đơn hàng	File Viewer
Kiểm tra thông tin chi tiết cho đơn hàng, chẳng hạn như ID đơn hàng, tên bệnh nhân, tên tài khoản, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao, ghi chú và tag.	Xem tệp do các hoạt động quét/CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Case Talk

Các ca tạo trong Medit Link có thể được chia sẻ với những người cụ thể do bạn chỉ định, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua "Case Talk" trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.

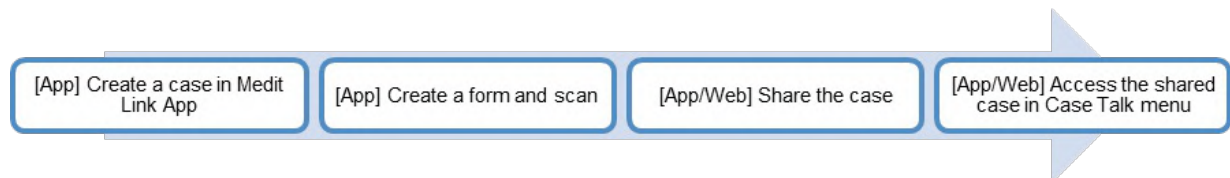


Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.


Tạo một Case Talk

Bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một ca được tạo trong Case Box/Work Box.

1. Tìm ca bạn muốn chia sẻ và nhấp vào nút "Chia sẻ" ở bên phải.

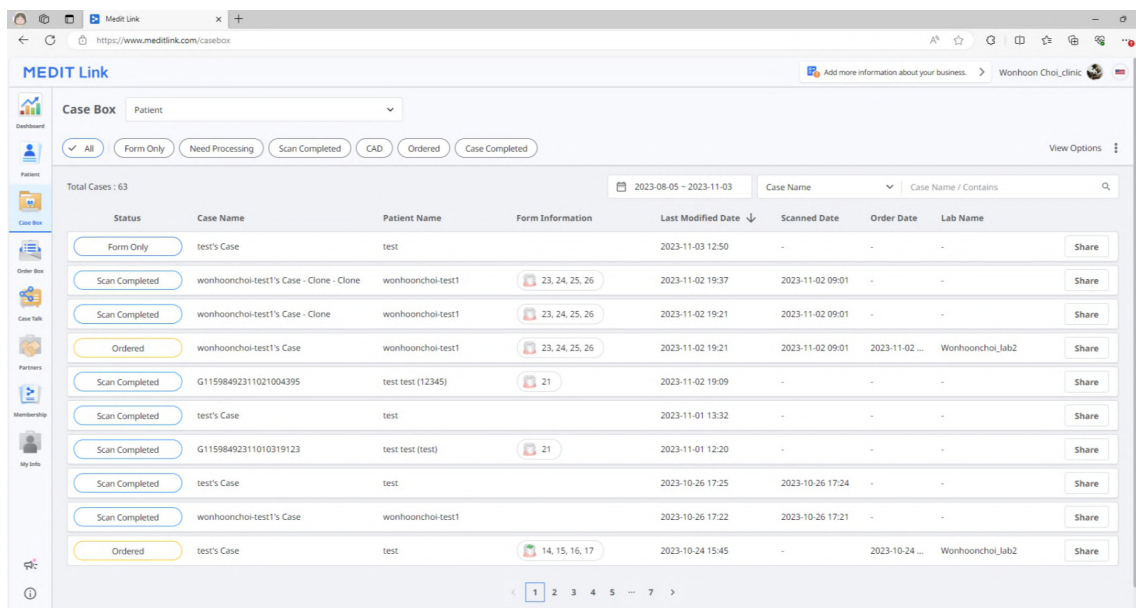

2. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.

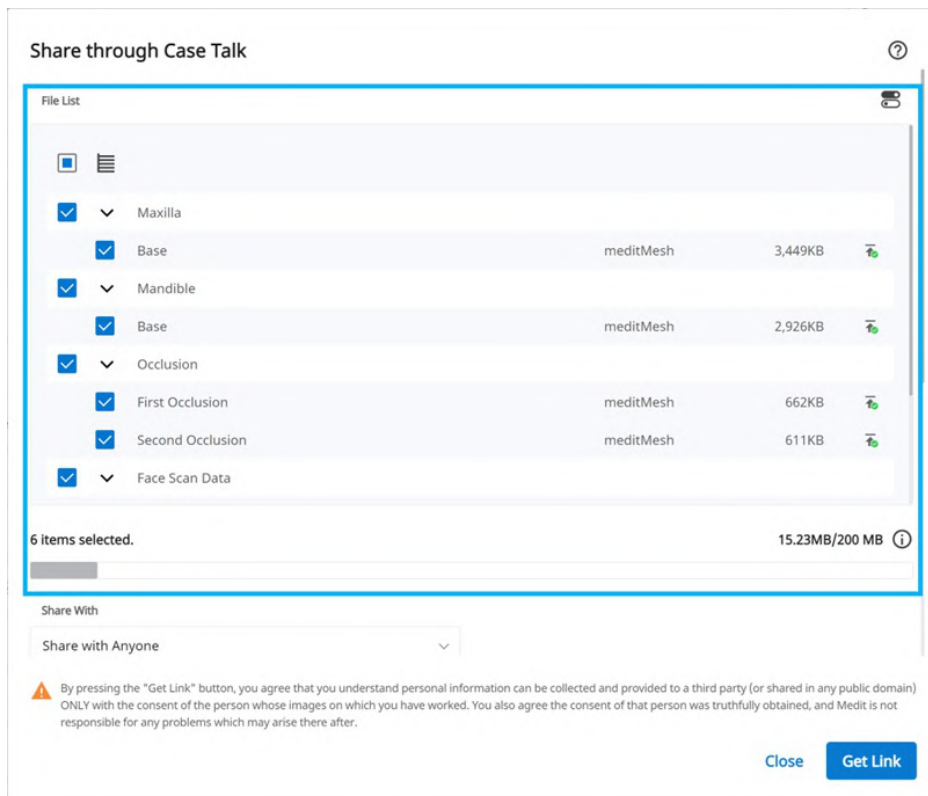


3. Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ.
4. Nhấp vào "Lấy liên kết" để tạo liên kết chia sẻ.

Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ

Chia sẻ với	• Chia sẻ với mọi người Tạo liên kết chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ tệp với bất cứ ai. • Chia sẻ với những người cụ thể Tạo và gửi liên kết chia sẻ tới những người cụ thể.
Chia sẻ qua	Nếu bạn chọn "Chia sẻ với những người cụ thể", bạn có thể chia sẻ liên kết với những người cụ thể theo nhiều cách khác nhau. • Địa chỉ email • Tin nhắn SMS • Đối tác
Ngày hết hạn	Đặt ngày hết hạn cho liên kết. Sau khi liên kết hết hạn, những người được bạn chia sẻ sẽ không còn quyền truy cập vào tệp nữa. Bạn có thể gia hạn thời gian hết hạn lên tới 90 ngày kể từ ngày hôm nay.
Mã PIN	Đặt mã truy cập gồm 6 chữ số để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Chia sẻ tên bệnh nhân	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả những người có liên kết sẽ thấy tên bệnh nhân.
Cấp quyền tải xuống	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả người dùng có liên kết đều có thể tải xuống tệp.
Cho phép bình luận	• Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ có thể giao tiếp thông qua liên kết chia sẻ. • Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này, người nhận chỉ có thể xem bình luận của bạn chứ không thể thêm bình luận.
Bình luận	Bạn có thể để lại lời nhắn trong phần bình luận.

Chi tiết Case Talk

Bạn có thể xem tệp trong ca được chia sẻ. Các chức năng sau có sẵn trên trang chi tiết Case Talk.

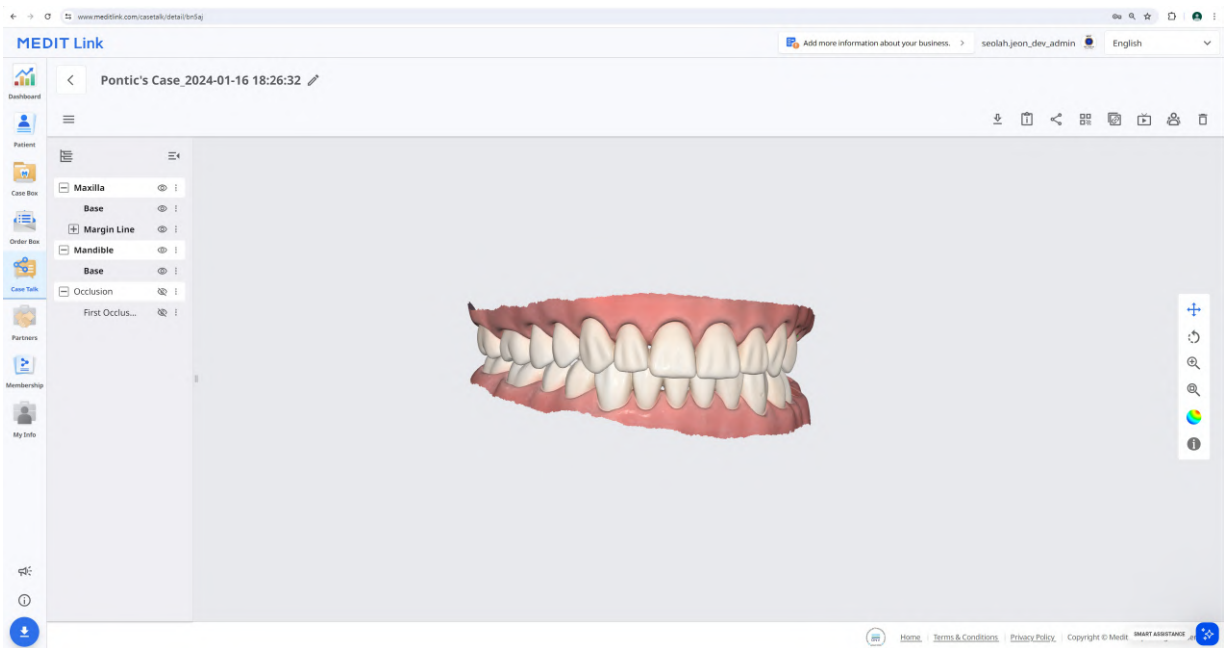

	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.
	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Chia sẻ ca với mã QR.
	Sao chép liên kết	Sao chép liên kết chia sẻ vào bộ nhớ tạm. Liên kết được sao chép hiển thị các tệp được chia sẻ trên trình duyệt web của bạn.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng đang truy cập vào liên kết chia sẻ.
	Xóa	Xóa liên kết chia sẻ. Liên kết chia sẻ đã xóa không còn truy cập được nữa.

Lưu ý


Dịch vụ sau đây không có trong MEDIT Link China.

- Live
- Khách mời

Web Viewer

Bạn có thể xem dữ liệu được chia sẻ qua Case Talk trong trình duyệt web.

Bạn có thể giao tiếp với những người có quyền truy cập vào liên kết bằng chú thích và bình luận.

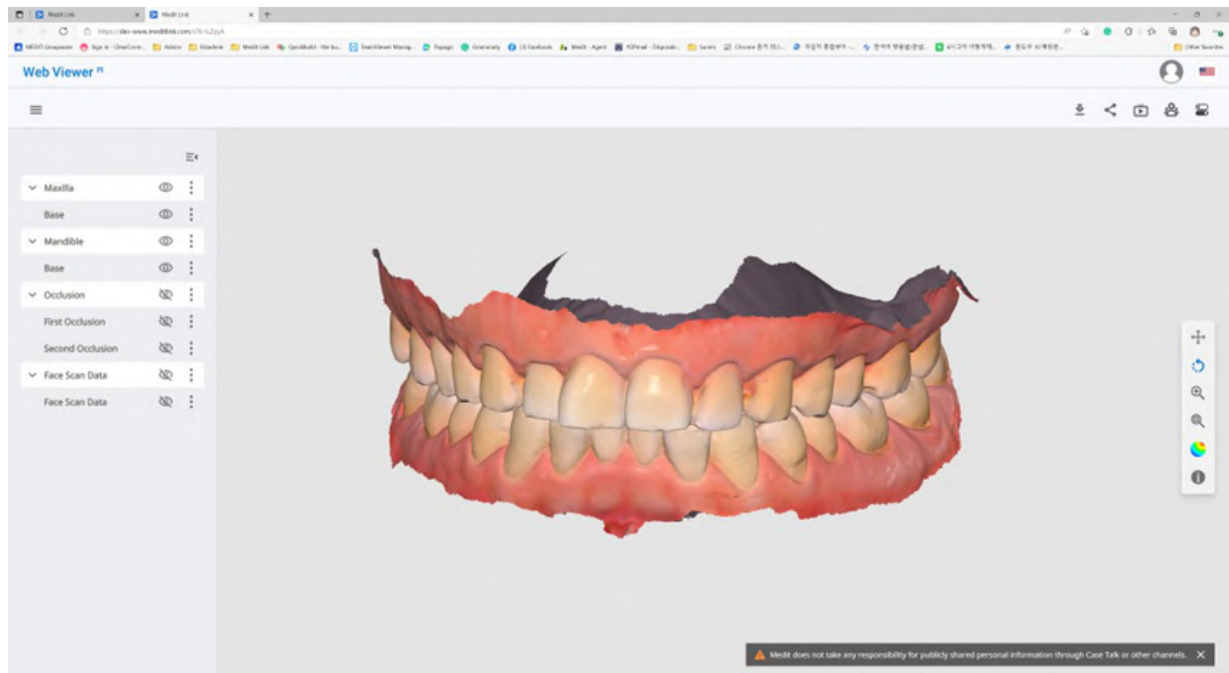

	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca này về máy tính.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.
	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Sao chép liên kết chia sẻ vào bộ nhớ tạm. Liên kết được sao chép hiển thị các tệp được chia sẻ trên trình duyệt web của bạn.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ.
	Dán nhãn răng	Thay đổi hệ thống dán nhãn răng.


Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live
- Khách mời

Chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào vị trí được chỉ định trên mô hình 3D. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem chú thích do bạn thêm.

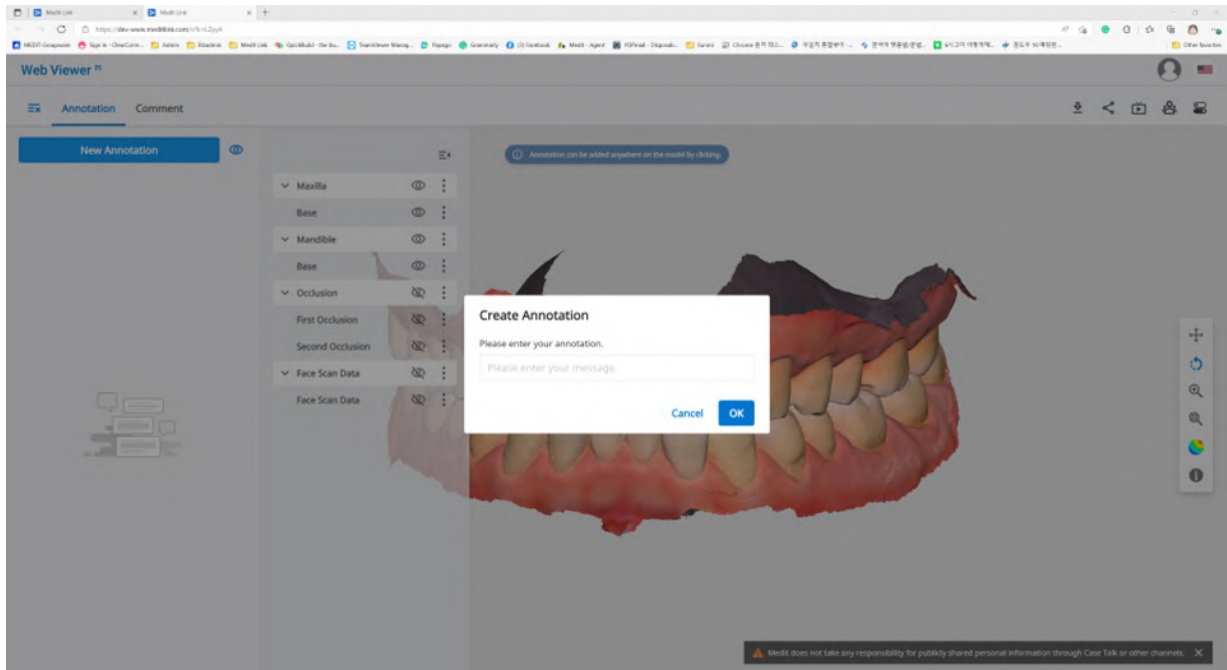

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- [Chú thích](#)

1. Tìm biểu tượng menu ở góc trên cùng bên trái và chọn tab "Chú thích". Sử dụng nút "Chú thích mới" để thêm chú thích vào bất kỳ đâu trên dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.
2. Nhập tin nhắn, sau đó nhấp vào "OK" để lưu.

3. Bạn có thể sử dụng chú thích làm kênh giao tiếp đơn giản. Nhấp vào chú thích đã tạo để nhập phản hồi và nhấn "Gửi".

Bình luận

Bạn có thể giao tiếp với những người dùng có quyền truy cập vào liên kết thông qua tab "Bình luận" trong menu Web Viewer.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Bình luận

Chia sẻ màn hình theo thời gian thực

Bạn có thể chia sẻ màn hình theo thời gian thực.

Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live

1. Nhấp vào "Live" để chia sẻ màn hình Web Viewer của bạn với người dùng được kết nối.





2. Nhấp vào "OK" để bắt đầu chia sẻ màn hình.
3. Những người khác đã truy cập liên kết phải chấp nhận chia sẻ màn hình.
4. Màn hình của người dùng bắt đầu chia sẻ màn hình được hiển thị đồng bộ với màn hình của người nhận được yêu cầu.



Cây dữ liệu

Tất cả dữ liệu được nhóm và hiển thị theo thuộc tính trong cây dữ liệu. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ, v.v.

Kiểm soát cây dữ liệu

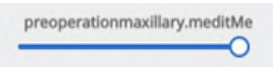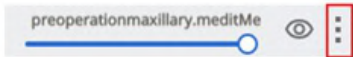Hiện/Ẩn	Nhấp vào biểu tượng 'mắt' để hiện hoặc ẩn dữ liệu khỏi chế độ hiển thị. Kiểm soát mức độ hiển thị dữ liệu dưới dạng nhóm hoặc tệp riêng lẻ.
Độ mờ	Di chuột qua thành phần hiển thị để xem thanh trượt độ mờ. Điều chỉnh thanh trượt để thay đổi độ trong suốt của dữ liệu. 
Menu mở rộng	Menu mở rộng nằm ở phía bên phải của mỗi thành phần trong Cây dữ liệu. Có các tùy chọn sau:  • Chỉ hiển thị mục này: Ẩn tất cả dữ liệu khác ngoại trừ dữ liệu hiện tại. • Ẩn: Ẩn dữ liệu hiện tại.

Điều khiển mô hình 3D

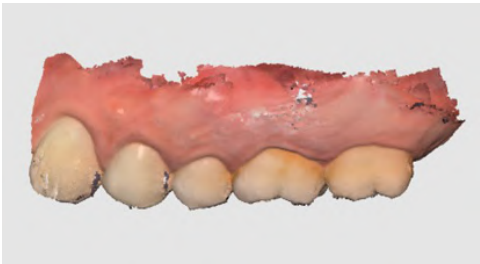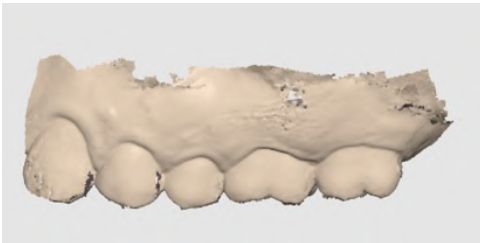	Di chuyển		Di chuyển mô hình.
	Xoay		Xoay mô hình.
	Phóng to/thu nhỏ		Phóng to và thu nhỏ mô hình.
	Thu phóng vừa màn hình		Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
	Chế độ hiển thị mô hình	Bật họa tiết	Hiển thị dữ liệu bằng màu sắc kết cấu thực. 
		Tắt kết cấu	Hiển thị dữ liệu đơn màu. 

Partners

Bạn có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng để yêu cầu hợp tác và xem danh sách đối tác hiện tại.




Các dịch vụ sử dụng Google Maps không khả dụng trong Medit Link China.

Tìm kiếm đối tác


Bạn có thể tìm kiếm người dùng Medit Link dựa theo tên doanh nghiệp và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp của họ.

Trong phần kết quả tìm kiếm, bạn có thể gửi yêu cầu hợp tác đến doanh nghiệp mà bạn muốn hợp tác.

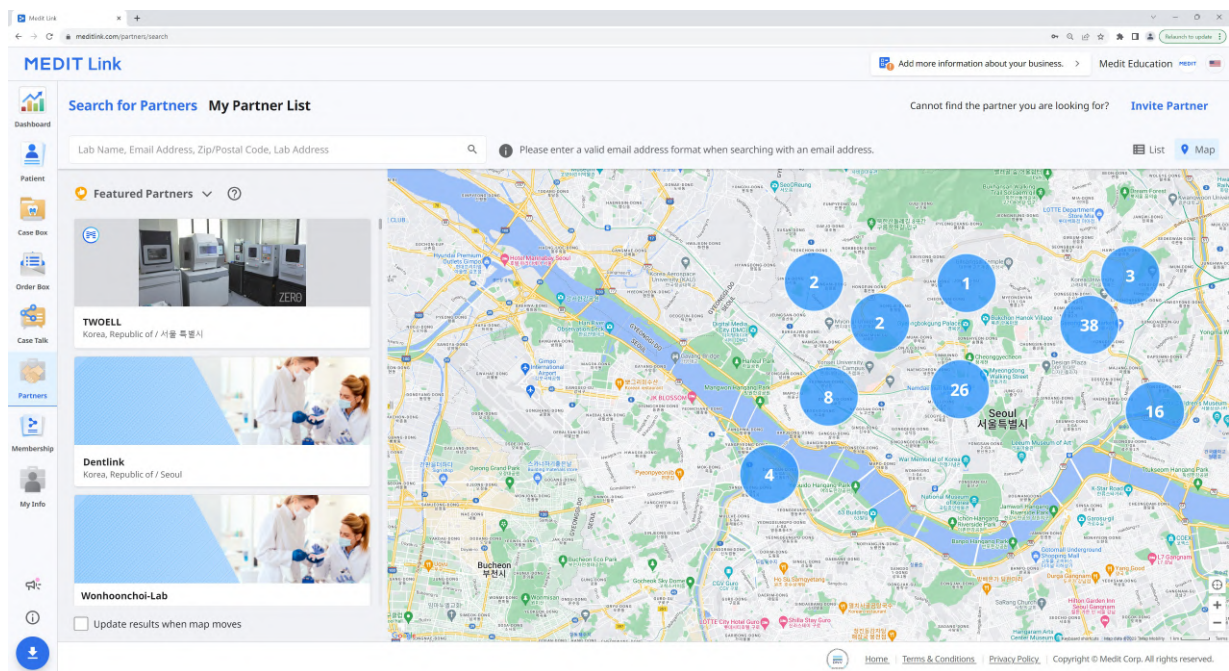

Danh sách đối tác của tôi

Bạn có thể xem lại quan hệ đối tác hiện tại với tất cả các doanh nghiệp đối tác hiện bạn có trong Danh sách đối tác của tôi.

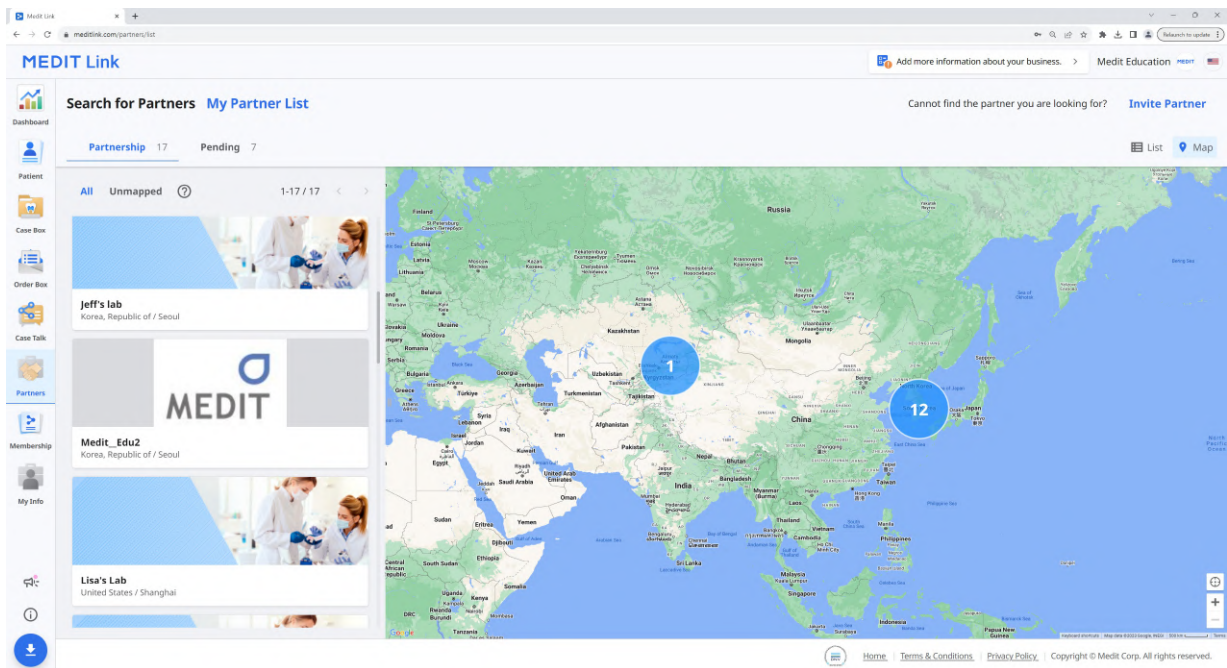

Mời đối tác

Nếu bạn muốn hợp tác với một phòng khám hoặc phòng lab, bạn có thể mời họ tham gia Medit Link. Quan hệ đối tác sẽ tự động hình thành sau khi họ chấp nhận lời mời.

1. Nhấp vào "Mời đối tác" ở phần trên cùng bên trái màn hình.
2. Nhập địa chỉ email của doanh nghiệp bạn muốn hợp tác và gửi cho họ lời mời kèm theo yêu cầu hợp tác.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Sau khi tổ chức được mời chấp nhận lời mời và đăng ký Medit Link, hệ thống sẽ tự động thiết lập quan hệ đối tác.


Membership

Thành viên

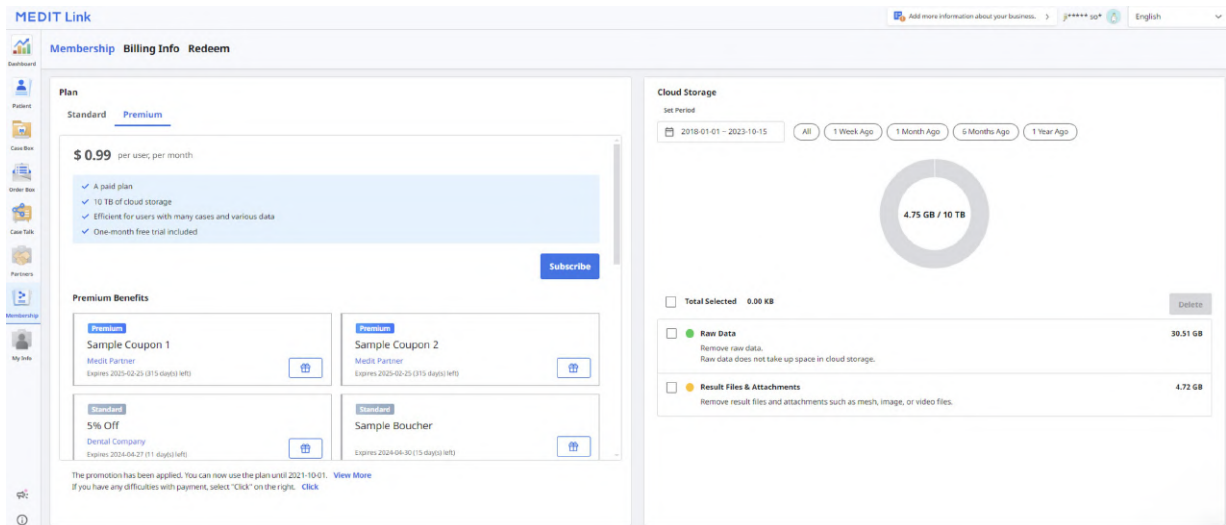

Gói

Bạn có thể xem những gì được cung cấp trong mỗi gói, bao gồm voucher, phiếu giảm giá, và trạng thái gói đăng ký hiện tại của bạn. Bạn có thể nâng cấp gói của bạn hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

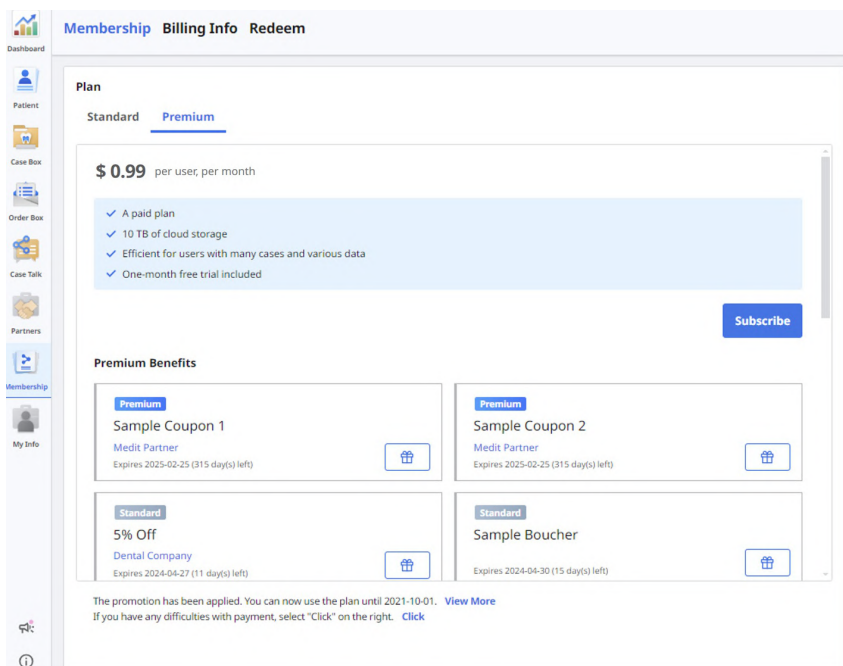

Medit Link có các gói thành viên sau:

Standard

- Gói tiêu chuẩn miễn phí cho tất cả người dùng đã đăng nhập
- Bộ nhớ đám mây 1 GB
- Dành cho người dùng mới

Premium

- Gói trả phí
- Bộ nhớ đám mây 10 TB
- Dành cho người dùng có nhiều ca và nhiều dữ liệu khác nhau
- Dùng thử miễn phí một tháng

	Standard	Premium
Bộ nhớ đám mây	1 GB	10 TB
Phí hàng tháng	Miễn phí	0,99 USD/tháng


* Bộ nhớ đám mây không tính toán dung lượng mà Dữ liệu thô chiếm.

Lưu ý

Medit Link China có các gói thành viên. Bạn có thể dùng gói Premium miễn phí cho đến khi tính năng này được phát hành chính thức.

Bộ nhớ đám mây

Ở phần bên phải, bạn có thể quản lý bộ nhớ đám mây.

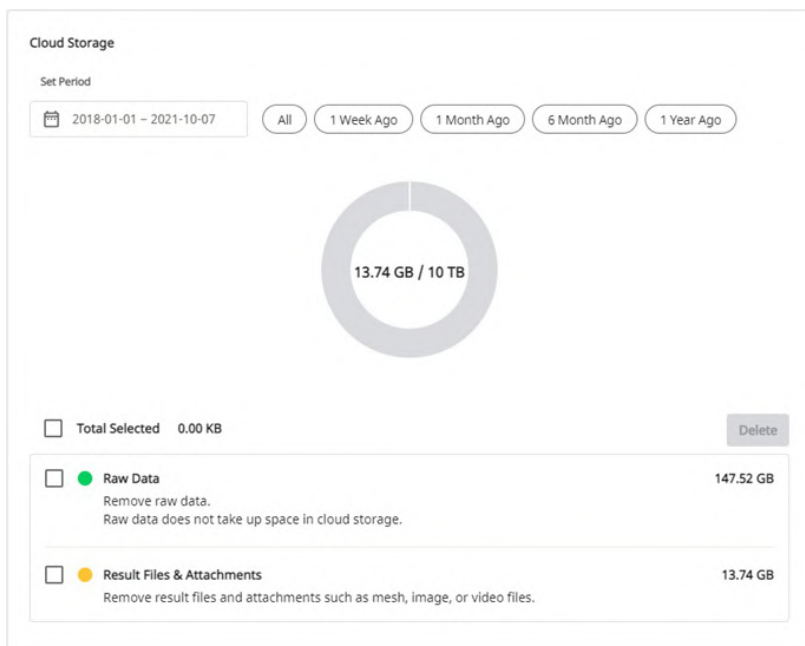


Đặt khoảng thời gian	Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian đó. • Tất cả: Xem tất cả các tệp. • 1 tuần trước: Xem các tệp đã qua một tuần kể từ khi tạo. • 1 tháng trước: Xem các tệp đã qua một tháng kể từ khi tạo. • 6 tháng trước: Xem các tệp đã qua sáu tháng kể từ khi tạo. • 1 năm trước: Xem các tệp đã qua một năm kể từ khi tạo.
Dữ liệu thô	Dữ liệu thô không chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây nên sẽ không có trong biểu đồ pi. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý dữ liệu thô từ đây nếu cần, ví dụ: xóa dữ liệu thô để bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân.
Kết quả & Tệp đính kèm	Tệp kết quả và tệp đính kèm chiếm dung lượng trong đám mây. Nếu đám mây đã đầy, bạn có thể lấy thêm dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các tệp không cần thiết.
Xóa	Xóa các tệp đã chọn khỏi bộ nhớ đám mây để giải phóng dung lượng.

Đăng ký


Nếu bạn hiện đang sử dụng gói Standard hoặc gói Premium với mã đổi quà, bạn có thể đăng ký gói Premium.

Thanh toán được hoàn tất thông qua dịch vụ Stripe (www.stripe.com).

1. Truy cập Thành viên > Gói > Premium và nhấp vào nút "Đăng ký".

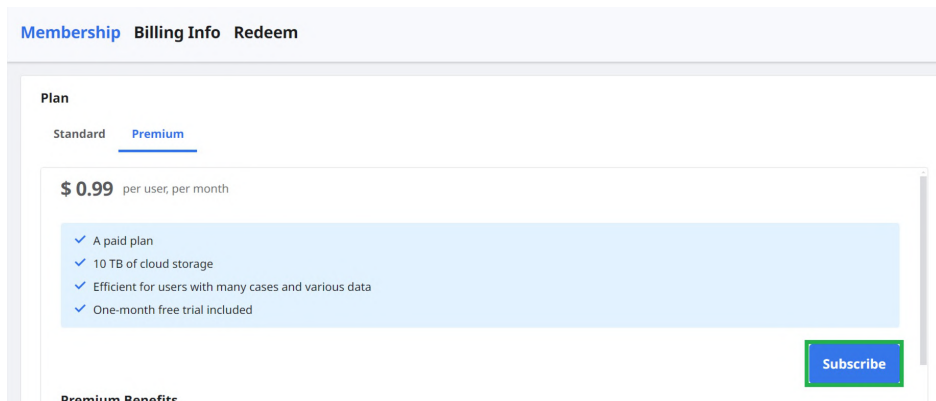


2. Kiểm tra nội dung mô tả gói Premium và nhấp lại vào "Đăng ký".

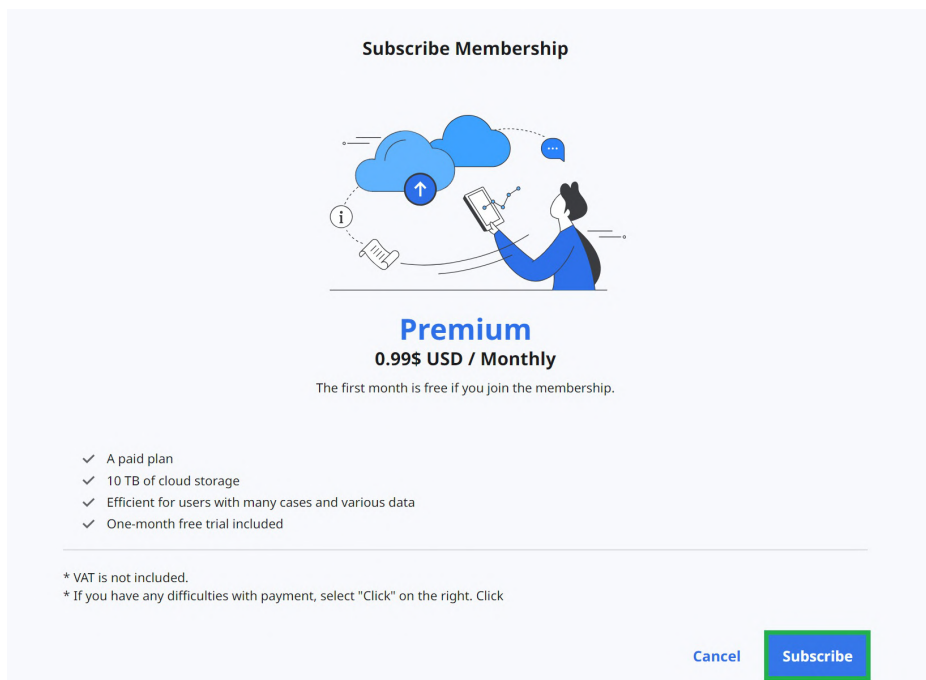

3. Kiểm tra giá cả, điều kiện và thông tin đầu vào cần thiết cho việc thanh toán. Sau đó, nhấp vào "Đăng ký".

43

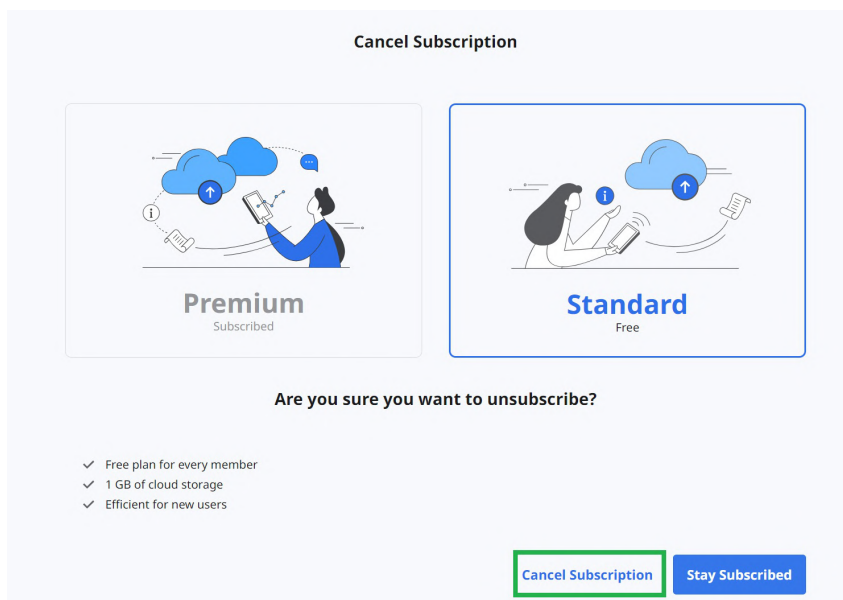

3. Để xác nhận rằng bạn muốn hủy đăng ký, hãy nhấp lại vào "Hủy đăng ký" trong cửa sổ bật lên mới.


Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Gói đăng ký của bạn đã bị hủy.
5. Gói của bạn sẽ được thay đổi thành Standard kể từ ngày thanh toán tiếp theo và bộ nhớ đám mây sẽ bị giới hạn ở 1 GB. Nếu vượt quá dung lượng bộ nhớ đám mây, các tệp sẽ không được sao lưu và chức năng đặt hàng và chia sẻ sẽ không khả dụng.

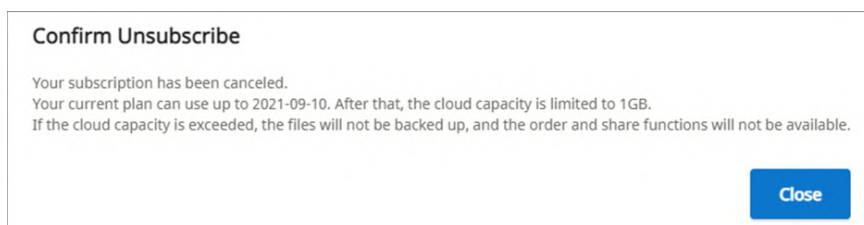

Thông tin thanh toán

Bạn có thể kiểm tra lịch sử thanh toán đối với gói đăng ký thành viên, bao gồm hóa đơn cho mỗi khoản thanh toán. Bạn cũng có thể thêm hoặc thay đổi phương thức thanh toán. Phương thức mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ lần thanh toán theo lịch tiếp theo.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Cách thêm phương thức thanh toán

1. Nhấp vào "Chỉnh sửa phương thức thanh toán".

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Nhấp vào "Thêm phương thức thanh toán".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Nhập thông tin cần thiết và nhấp vào "Thêm".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Phương thức thanh toán mới thêm sẽ được đặt làm mặc định và dùng cho lần thanh toán tiếp theo.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021

VISA **** 4242 Expires 11/2021

+ Add payment method

Cách thay đổi phương thức thanh toán

1. Nhấp vào biểu tượng menu mở rộng bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi trong cửa sổ

hộp thoại thanh toán.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.


PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Nhấp vào “Đặt làm mặc định” để đặt thẻ đã chọn làm phương thức thanh toán mặc định.

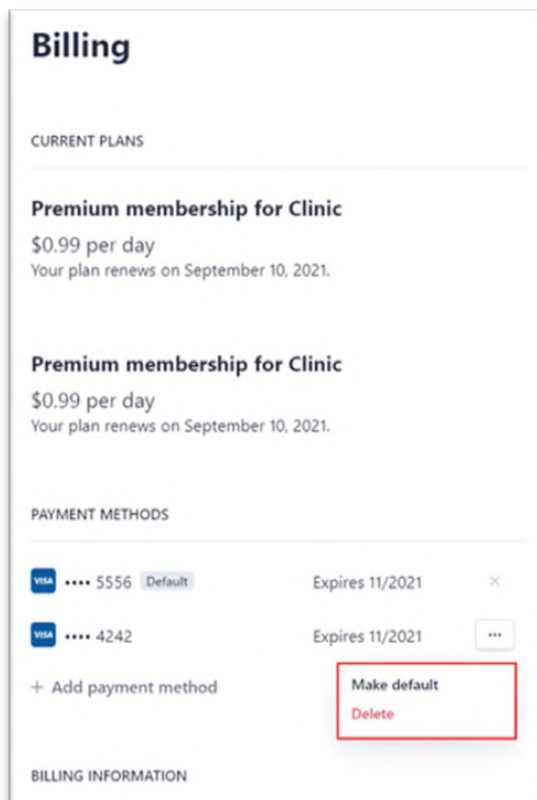

Đổi quà

Đăng ký mã đổi quà được cung cấp trong chương trình khuyến mãi. Bạn có thể sử dụng tư cách thành viên Premium cùng với mã đổi quà.

Đăng ký mã đổi quà

1. Nhập mã đổi quà và nhấn vào "Đăng ký".

2. Đọc thông báo và chọn "Đăng ký" hoặc "Áp dụng" trong hộp thoại bật lên.

- **Đăng ký:** Đăng ký mã đổi quà. Bạn có thể kích hoạt và sử dụng mã đổi quà sau khi đăng ký.
- **Áp dụng:** Đăng ký và kích hoạt mã đổi quà. Khuyến mãi giảm giá được áp dụng ngay lập tức.

Kích hoạt mã đổi quà

Bạn có thể đăng ký nhiều mã đổi quà, nhưng bạn cần kích hoạt mã bạn muốn sử dụng.

1. Nhấp vào nút "Kích hoạt" bên cạnh mã bạn muốn sử dụng.

- Nếu không có mã nào có trạng thái "Activated", mã bạn chọn sẽ được áp dụng ngay lập tức.
- Nếu có mã đã kích hoạt, mã mới chọn sẽ chuyển sang trạng thái "Waiting". Khi mã đổi quà đang kích hoạt hết hạn, mã đổi quà mới ở trạng thái "Waiting" sẽ tự động được kích hoạt.




Lưu ý

Chỉ có thể kích hoạt một mã đổi quà và chỉ một mã có thể ở trạng thái "Waiting".

My Info

Tài khoản của tôi

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký cũng như kiểm tra trạng thái thành viên của bạn.

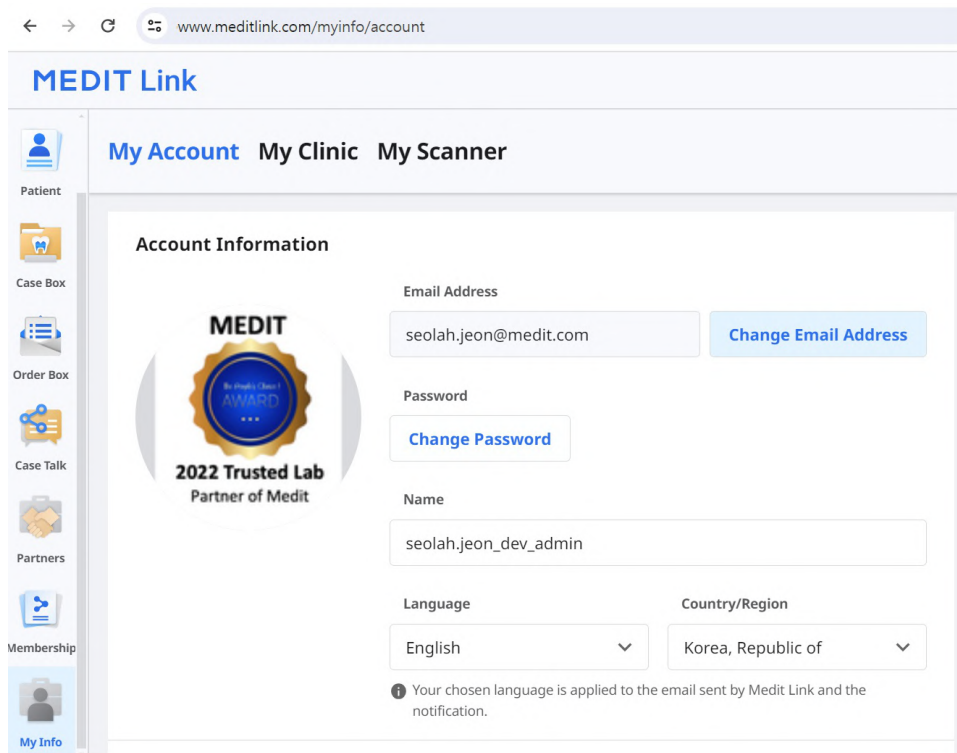

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A sidebar on the left contains icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a Medit logo with a "2022 Trusted Lab Partner of Medit" badge. The account details are as follows:

Field	Value	Action
Email Address	seolah.jeon@medit.com	Change Email Address
Password	Change Password	Change Password
Name	seolah.jeon_dev_admin	
Language	English	
Country/Region	Korea, Republic of	

Below the form, a note states: "Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification."

Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin về phòng khám hoặc phòng lab. Chỉ tài khoản quản trị viên mới có phần này.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Máy quét của tôi

Bạn có thể kiểm tra thông tin thiết bị được kết nối cho tài khoản.

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah.jeon

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home Terms & Conditions Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Menu khác

Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Website liên quan

Cho bạn biết nhiều thông tin khác nhau về cách sử dụng Medit Link. Truy cập vào các tài nguyên đào tạo và thông tin của Medit, chẳng hạn như Medit Academy, kênh YouTube Medit Academy và Trung tâm hỗ trợ Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Tải xuống ứng dụng Medit Link

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của trình cài đặt chương trình từ trang web. Menu này hữu ích khi bạn mất trình cài đặt được cung cấp trong gói sản phẩm hoặc trình cài đặt của bạn đã lỗi thời.

Lưu ý

Medit Link tự động cập nhật khi bạn có kết nối Internet.

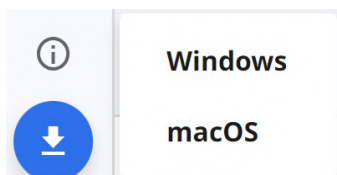

Tổng quan

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Thanh tiêu đề	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Thanh tiêu đề để biết thông tin chi tiết.
2	Menu	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Menu để biết thông tin chi tiết.
3	Công cụ và chức năng	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > File Viewer và Ứng dụng Medit Link > Tùy chọn hiển thị để biết thông tin chi tiết.
4	Danh sách ca	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Lọc và Tìm kiếm để biết thông tin chi tiết.

Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.

Loại tài khoản		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Tài khoản phòng khám	Quản trị viên	O	O	O	X	X	O	O	O
	Thành viên	O	O	O	X	X	O	O * Chỉ tính năng khôi phục	O
Tài khoản phòng lab	Quản trị viên	X	X	X	O	O	O	O	O
	Thành viên	X	X	X	O	O	O	O * Chỉ tính năng khôi phục	O

Thanh tiêu đề

Thanh tiêu đề cho phép truy cập nhanh vào các tính năng như thông tin tài khoản, thông báo, thông báo và cập nhật, cài đặt và trạng thái mạng.



Thông tin tài khoản

Mục Thông tin tài khoản chứa thông tin người dùng cơ bản như hình ảnh hồ sơ, tên phòng khám hoặc phòng lab, địa chỉ email và tên người dùng.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Thông báo

Bạn có thể xem các thông báo liên quan đến quan hệ đối tác, đơn hàng và quy trình làm việc.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Chọn hộp để chỉ hiển thị thông báo chưa đọc. |
| 2 | Nhấp vào thông báo bất kỳ để chuyển ngay đến ca hoặc trang web liên quan. |

Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Cài đặt

Hộp thoại Cài đặt cho phép người dùng cấu hình chương trình.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
 ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Vui lòng tham khảo [Ứng dụng Medit Link > Cài đặt](#) để biết thông tin chi tiết về các tùy chọn cài đặt.

Trạng thái mạng

Medit Link cho phép bạn sử dụng liền mạch tất cả các tính năng khi có kết nối mạng.

Biểu tượng trạng thái mạng hiển thị trên thanh tiêu đề để giúp bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối mạng theo thời gian thực.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Nếu kết nối mạng không tốt, bạn có thể gặp phải những hạn chế sau:

- Một số chức năng sẽ bị hạn chế, chẳng hạn như đặt hàng ca, tạo ca, chia sẻ qua Case Talk và đồng bộ đám mây.
- Hiệu suất tổng thể của dịch vụ có thể giảm đi do tác động từ môi trường mạng.

Trong trường hợp này, bạn có thể vào Chế độ ngoại tuyến để thực hiện các tác vụ cơ bản, sau đó sử dụng các tính năng cần Internet khi kết nối mạng.

Lưu ý

Biểu tượng mạng thể hiện tốc độ phản hồi giữa khu vực hiện tại và AWS (Amazon Web Service). Biểu tượng này không có ý nghĩa về tốc độ mạng. Do vậy, đôi khi biểu tượng mạng hiển thị trạng thái kém hoặc tệ, mặc dù tốc độ mạng đủ nhanh.

Nếu quy trình khác sử dụng cùng một mạng, tốc độ có thể hiển thị ở mức kém hoặc tệ và hiệu suất tổng thể của Medit Link có thể kém. Trong trường hợp này, vui lòng không dùng chung mạng với các quy trình khác. Ví dụ: tính năng "Tải lên dữ liệu thô" là một trong những quy trình mạng nặng. Nếu biểu tượng hiển thị trạng thái kém hoặc tệ, hãy đi tới Cài đặt > Tải lên dữ liệu thô và tắt "Tải lên tự động".

Cài đặt

Chung

Cung cấp các tùy chọn thiết lập hệ thống tổng thể.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Thư mục lưu	Chỉ định một thư mục để lưu trữ kết quả dữ liệu được tạo ra trong Medit Link và các chương trình được kết nối.	
Thư mục cài đặt ứng dụng	Chỉ định đường dẫn cài đặt cho Medit Apps và ứng dụng của đối tác có sẵn trong App Box.	
Cài đặt ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ cho chương trình.	
Dán nhãn răng	Lựa chọn hệ thống dán nhãn răng FDI hoặc Hoa Kỳ.	
Thông báo	Khi chọn, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật chương trình.	
Tải lên dữ liệu thô	Khi chọn, dữ liệu thô sẽ tự động được tải lên đám mây. Chức năng này giúp sao lưu dữ liệu gốc và thực hiện quét liên mạch khi sử dụng Medit Link với cùng một tài khoản trên máy tính khác. Sao lưu đám mây dữ liệu gốc chỉ áp dụng với dữ liệu thu được trong Medit Scan for Clinics.	
Quét nhanh	Chọn xem bạn có muốn các giai đoạn quét dưới đây tự động xuất hiện trong Medit Scan for Clinics mà không cần phải điền thông tin vào mẫu hay không. • Trước phục hình hàm trên • Trước phục hình hàm dưới • Quét mặt	
Tùy chọn hiển thị	Kết xuất nâng cao	Khi chọn, mô hình 3D được hiển thị ở dạng kết xuất sống động và chân thực hơn.
	Điều chỉnh kết cấu màu	Điều chỉnh độ sáng của mô hình 3D. * Màu sắc thu được có thể hơi khác so với Medit Link khi bạn mở cùng một dữ liệu bằng phần mềm khác.
Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng Medit	Tham gia Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng Medit. • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. • Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.	
Trang mặc định sau khi đăng nhập	Chọn menu mặc định để hiển thị khi khởi động chương trình. • Tài khoản phòng khám có thể chọn Patient hoặc Case Box • Tài khoản phòng lab có thể chọn In Box hoặc Work Box	

Quản lý lưu trữ

Kiểm tra và quản lý không gian lưu trữ cục bộ và đám mây.

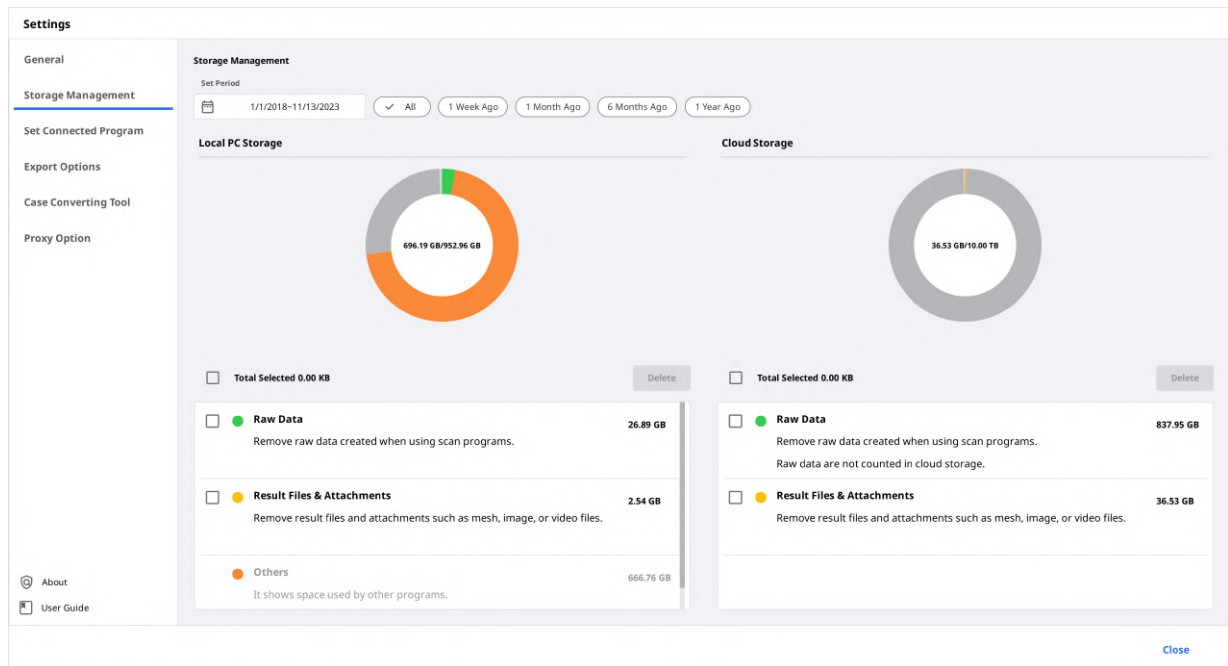

Đặt khoảng thời gian

Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian dưới đây.

- Tất cả: Xem tất cả các tệp.
- 1 tuần trước: Xem các tệp đã qua một tuần kể từ khi tạo.
- 1 tháng trước: Xem các tệp đã qua một tháng kể từ khi tạo.
- 6 tháng trước: Xem các tệp đã qua sáu tháng kể từ khi tạo.
- 1 năm trước: Xem các tệp đã qua một năm kể từ khi tạo.

Bộ nhớ cục bộ

Quản lý dung lượng lưu trữ của máy tính.

Dữ liệu thô	Xóa dữ liệu thô đã chọn khỏi máy tính. Nếu dữ liệu thô đã được tải lên đám mây, bạn có thể tải xuống và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
Kết quả & Tệp đính kèm	Xóa kết quả và các tệp đính kèm khỏi máy tính, chẳng hạn như lưới, hình ảnh và video. Nếu những tệp này đã được tải lên đám mây, bạn có thể tải xuống và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn.
Khác	Xem các tệp được sử dụng để vận hành hệ thống và các chương trình khác. Tùy chọn này hiển thị bộ nhớ máy tính của bạn. Bạn không thể xóa các tệp này khỏi Medit Link.
Xóa	Xóa các tệp đã chọn khỏi máy tính.

Bộ nhớ đám mây

Quản lý dung lượng lưu trữ đám mây.

Dữ liệu thô	Dữ liệu thô không chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây nên sẽ không có trong biểu đồ pi. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý dữ liệu thô từ đây nếu cần, ví dụ: xóa dữ liệu thô để bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân, v.v.
Kết quả & Tập đính kèm	Tập kết quả và tập đính kèm chiếm dung lượng trong bộ nhớ đám mây. Nếu đám mây đã đầy, bạn có thể lấy thêm dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các tập không cần thiết.
Mua dung lượng	Nếu bạn đang sử dụng gói Standard, hãy đăng ký gói Premium để có bộ nhớ đám mây lớn hơn.
Xóa	Xóa các tập đã chọn khỏi bộ nhớ đám mây để giải phóng dung lượng lưu trữ.

Cài đặt chương trình được kết nối

Quản lý các chương trình hỗ trợ tích hợp trong Medit Link.

Settings

- General
- Storage Management
- Set Connected Program**
- Export Options
- Case Converting Tool
- Proxy Option
- About
- User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

Bạn có thể kết nối các chương trình sau:

	Tài khoản phòng khám	Tài khoản phòng lab
Chương trình quét	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Lưu ý

Medit Link dành cho Mac không hỗ trợ tích hợp các dịch vụ sau.

- **Medit Scan for Labs**

Tùy chọn xuất

Cài đặt cách xuất tệp từ Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply


Close

62

Loại CAD	Chọn chương trình CAD mà bạn muốn sử dụng để thiết kế. Chương trình sẽ điều chỉnh kết quả dựa trên lựa chọn của bạn, cho phép bạn tiếp tục thiết kế mà không cần căn chỉnh thêm đối với trục.
Xuất tệp đến	Chỉ định đường dẫn nơi bạn muốn lưu trữ kết quả.
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới cuối cùng.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén & Kết hợp,	Nén tệp: Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất. Kết hợp lưới riêng lẻ: Kết hợp tất cả kết quả cho hàm trên hoặc hàm dưới vào một tệp. Khi sử dụng một số chương trình không thể nhập và xử lý nhiều tệp, bạn có thể gộp chúng thành một để xử lý trong các chương trình đó.
Tùy chọn khi thư mục hoặc tệp giống hệt đã tồn tại.	Chọn hành động mặc định cho các ca khi tên thư mục hoặc tệp giống hệt đã tồn tại trong đường dẫn đích. • Luôn hỏi khi xuất. • Xuất một tệp mới và ghi đè lên các tệp hiện có. Tệp hiện đang lưu trữ sẽ bị mất. • Tạo một thư mục và xuất các tệp
Quy tắc tên thư mục	Xác định quy tắc tạo tên thư mục khi xuất tệp. Quy tắc đã đặt sẽ được áp dụng để đặt tên thư mục và tệp đã xuất sẽ lưu trong thư mục được tạo. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID đơn hàng
Quy tắc tên tệp	Xác định quy tắc đặt tên tệp được xuất. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca, Tên đối tác, ID đơn hàng

Công cụ chuyển đổi ca


Bạn có thể di chuyển ca giữa các tài khoản khác nhau bằng cách xuất ca hiện có trong tài khoản hoặc nhập ca đã xuất từ tài khoản khác.

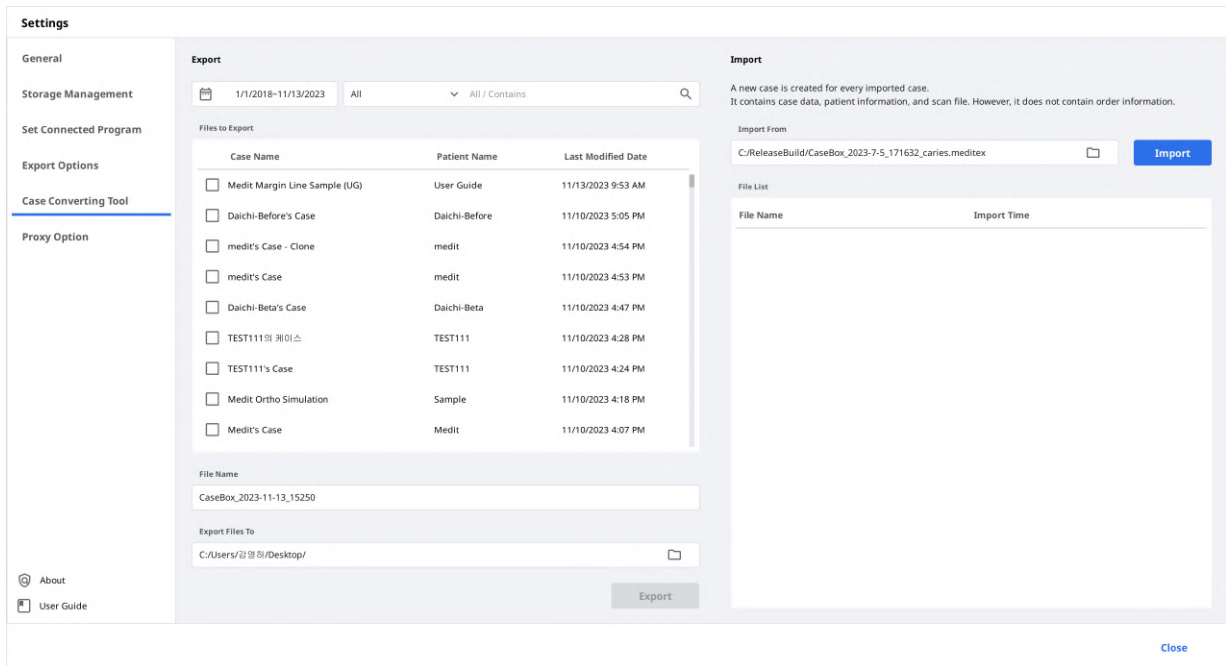


Xuất ca

Xuất các ca trong tài khoản hiện đang đăng nhập sang máy tính cục bộ.

1. Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

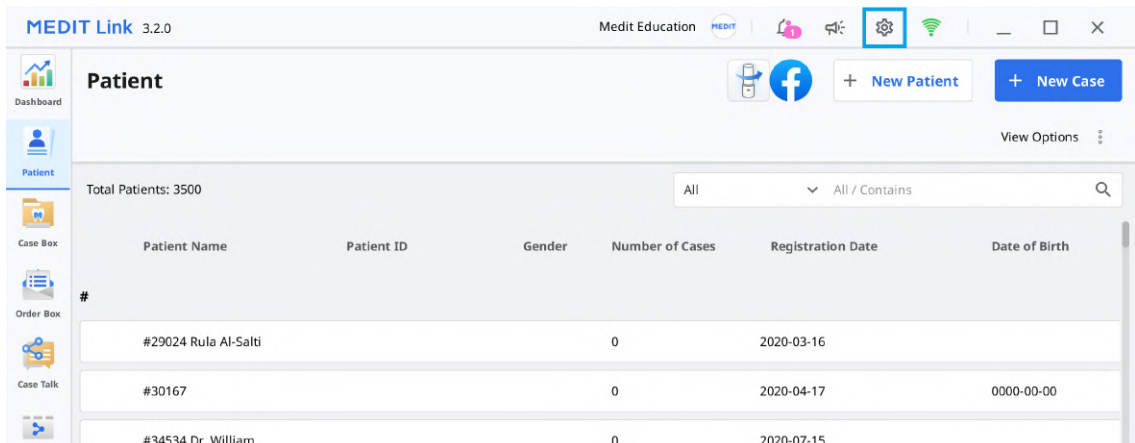

2. Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

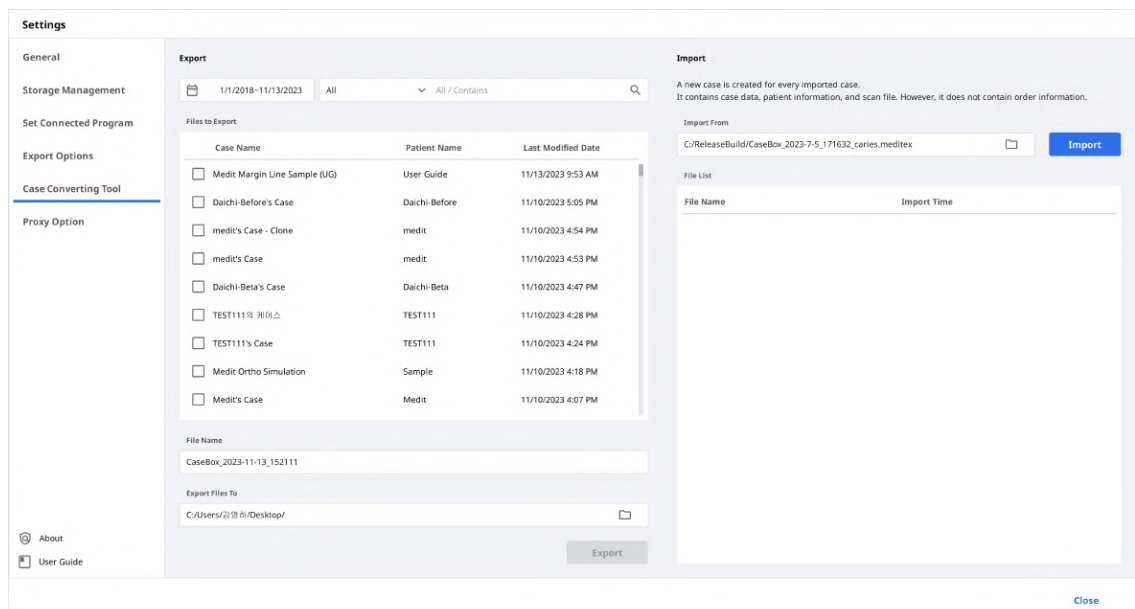

- Trong phần Xuất, đặt khoảng thời gian hoặc tìm kiếm ca để xuất nếu cần.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name

☒ Contains
☐ Equals

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

- Chọn ca bạn muốn xuất từ danh sách trong phần "Tập cần xuất".

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

- Đặt tên tệp bằng cách chỉnh sửa tên ca trong trường Tên tệp.
- Đặt thư mục đích để xuất ca đã chọn.
- Nhấp vào "Xuất."
- Nhấp vào "Có" để mở thư mục nơi tệp được xuất đến.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

- Các ca đã xuất sẽ được lưu ở định dạng tệp .meditex.

Nhập ca

- Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk


Patient

Total Patients: 3500


All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	


- Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

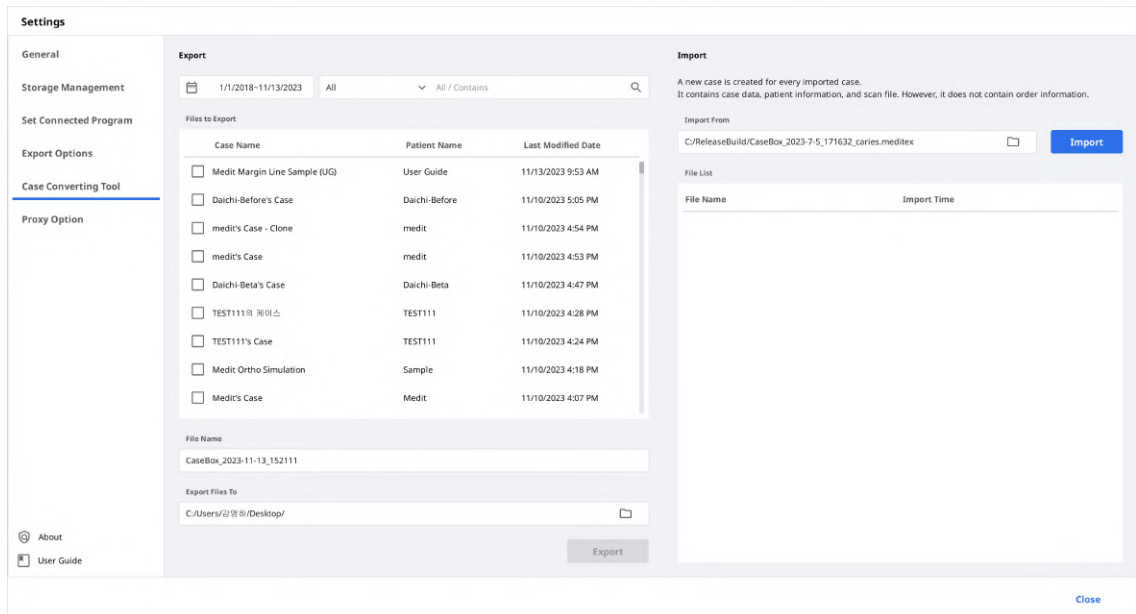

- Trong phần Nhập, nhấp vào biểu tượng thư mục để duyệt tìm tệp .meditex bạn muốn nhập trong máy tính của bạn.

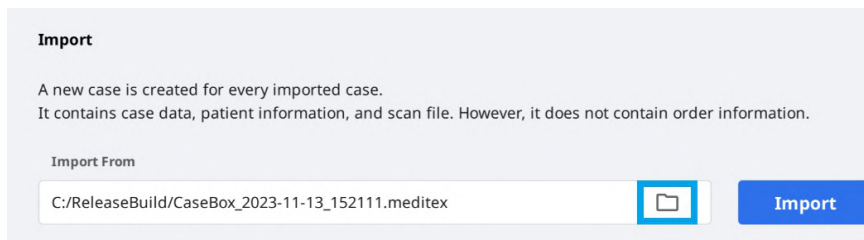

- Nhấp vào nút “Nhập” và kiểm tra các tệp cần nhập trong danh sách bên dưới.

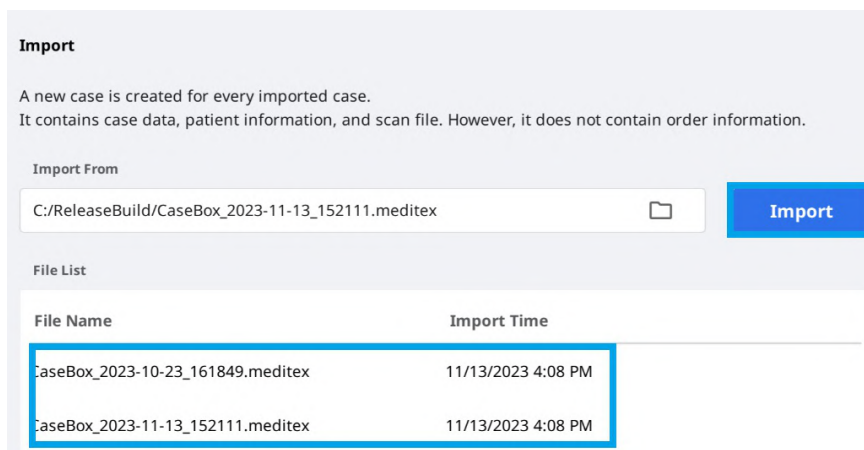

- Ca đã nhập cũng sẽ xuất hiện trong Case Box (Tài khoản phòng khám) hoặc Work Box (Tài khoản phòng lab).

Tùy chọn proxy

Trong một số môi trường mạng hạn chế, bạn có thể thay đổi cài đặt mạng.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Giới thiệu

Hiển thị thông tin chi tiết về Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



Close

Hướng dẫn sử dụng


Nhận hướng dẫn sử dụng Medit Link.

Bạn cần có kết nối Internet để mở hướng dẫn sử dụng.

Menu

Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho toàn bộ công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

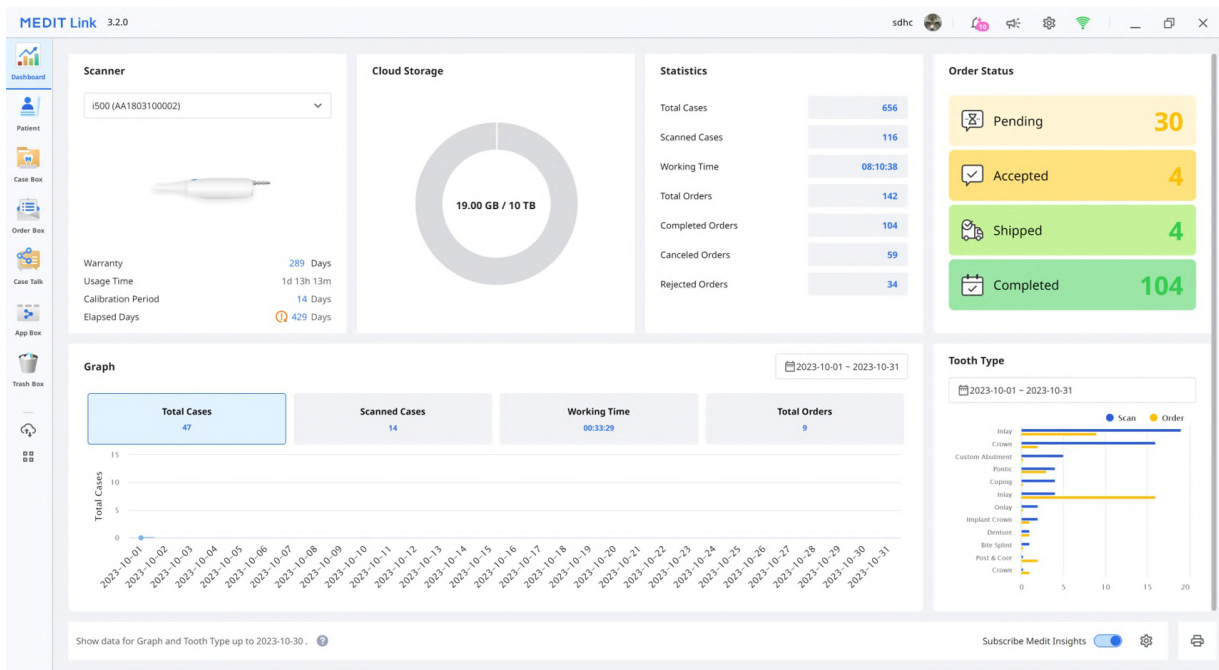

Lưu ý

Vui lòng tham khảo [Trang web Medit Link > Dashboard](#) để biết thêm thông tin về dashboard và Medit Insights.

Patient

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc gộp bệnh nhân trên menu Patient.

The Patient management screen allows users to view and manage their patient database. The table below represents the data shown in the interface:

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
K k						
KELLY				1	2021-07-02	<button>Scan</button> ⋮
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	<button>Scan</button> ⋮
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	<button>Scan</button> ⋮
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	<button>Scan</button> ⋮
Michele Rinn				3	2021-04-26	<button>Scan</button> ⋮
N n						
newpatient				1	2022-10-13	<button>Scan</button> ⋮
O o						
ORG_Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	<button>Scan</button> ⋮
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	<button>Scan</button> ⋮
R r						

Thêm bệnh nhân mới

1. Nhấp vào "Bệnh nhân mới".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

[Cancel](#) [Save](#)

2. Điền thông tin cần thiết vào hộp thoại Bệnh nhân mới, sau đó nhấp vào "Lưu".

Xóa bệnh nhân



Bạn chỉ có thể xóa một bệnh nhân khi bệnh nhân đó không có ca nào.

1. Chọn bệnh nhân cần xóa khỏi danh sách.

Dr. Celeb

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

▼

All / Contains

🔍

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	아미는	♂	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Nhấp vào "Xóa".

Gộp bệnh nhân

Bạn có thể gộp tất cả các ca của nhiều bệnh nhân thành một bệnh nhân.

1. Chọn bệnh nhân bạn muốn gộp từ danh sách.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb [Profile Icon] [Bell Icon] [Settings Icon] [Wi-Fi Icon] [Signal Icon]

[Dashboard Icon] Patient [Facebook Icon] [Mobile App Icon] [New Patient] + New Case

Patient View Options [Dropdown Arrow]

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2 All / Contains [Search Icon]

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
T	☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
t	☒ Temporaries				0	2023-10-04	
t	☒ T.O.P	카피본	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Nhấp vào "Gộp bệnh nhân".
3. Chọn bệnh nhân đích mà bạn muốn gộp tất cả các ca vào.
4. Tất cả các ca được gộp vào bệnh nhân đích và thông tin bệnh nhân của bệnh nhân đích không thay đổi.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Nhấp vào "Áp dụng" để tiến hành gộp.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Teeth Arch

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

- | | |
|---|---|
| 1 | Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân. |
| 2 | Cung cấp các tính năng chính có sẵn: Nút Quét hoặc Mở, nút Đặt hàng, biểu tượng ứng dụng. |
| 3 | Hiển thị các tab có sẵn: Mẫu, File Viewer. |
| 4 | Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp. |
| 5 | Hiển thị giao diện người dùng đăng ký qua mẫu cho chương trình quét đã chọn. |
| 6 | Cung cấp thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc để người dùng lựa chọn cho số răng đã chọn. |
| 7 | Hiển thị thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc áp dụng cho răng đã chọn. |

Tab trong Case Box/Work Box

Mẫu	File Viewer
Tab mẫu cung cấp giao diện người dùng để nhập thông tin cơ bản cho công việc quét, chẳng hạn như loại, phương pháp, vật liệu cho số răng và các tùy chọn quét. Thông tin bạn nhập sẽ được chuyển đến chương trình quét đã kết nối và được dùng làm thông tin đặt hàng khi đặt hàng với đối tác.	Xem tệp kết quả do chương trình quét và CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Chức năng trong Case Box/Work Box

Các chức năng sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca	Hiển thị trạng thái của ca.
	Truy cập Order Box/In Box	Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Thông tin ca	Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.
	Ghi chú & Tag	Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.
	Lịch sử ca	Cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử ca. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Xóa	Xóa ca. Bạn không thể xóa ca đã đặt hàng hoặc ca được tạo ngoại tuyến.
	Sao chép	Tạo một bản sao của ca hiện tại trong Case Box. Tất cả dữ liệu sẽ được sao chép vào bản sao của ca. Tính năng này giúp sao chép thông tin điều trị cho cùng một bệnh nhân hoặc đặt hàng bổ sung với cùng một thông tin hoặc tệp.
	Đính kèm	Đính kèm tập ở nhiều định dạng khác nhau.
	Xuất	Xuất tệp kết quả quét hoặc CAD sang máy tính cục bộ. Bạn có thể chọn định dạng tệp ưa thích khi xuất tệp. Bạn có thể dùng tệp đã xuất trong phần mềm CAD và CAM cho công việc sau này.
	Chia sẻ	Tạo liên kết để chia sẻ. Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung. Bạn có thể tùy ý chia sẻ liên kết với bất kỳ ai hoặc chỉ những người cụ thể. Bạn cũng có thể đặt mã PIN hoặc ngày hết hạn liên kết để bảo mật thông tin cá nhân.
	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Đến trang Trung tâm hỗ trợ Medit để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Order Box/In Box

Type	Method	Material	Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2	Cung cấp các chức năng quản lý đơn hàng (chấp nhận/hủy; giao/nhận).
3	Hiển thị các tab có sẵn: Đơn hàng, File Viewer.
4	Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp: trạng thái ca, phím tắt để xem thông tin chi tiết, thông tin ca, ghi chú & tag, v.v.
5	Hiển thị thông tin chi tiết cho đơn hàng, bao gồm số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên đối tác, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao và ghi chú & tag.
6	Hiển thị thông tin sản phẩm đã đặt hàng và trạng thái giao hàng.

Tab trong Order Box/In Box

Đơn hàng	File Viewer
Kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến đơn hàng, chẳng hạn như số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên tài khoản, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao, ghi chú và tag.	Xem tệp do các hoạt động quét/CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.


Case Talk

Bạn có thể chia sẻ các ca đã tạo trong Medit Link với những người cụ thể, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua Case Talk trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.



Dịch vụ Case Talk đòi hỏi phải có kết nối internet.

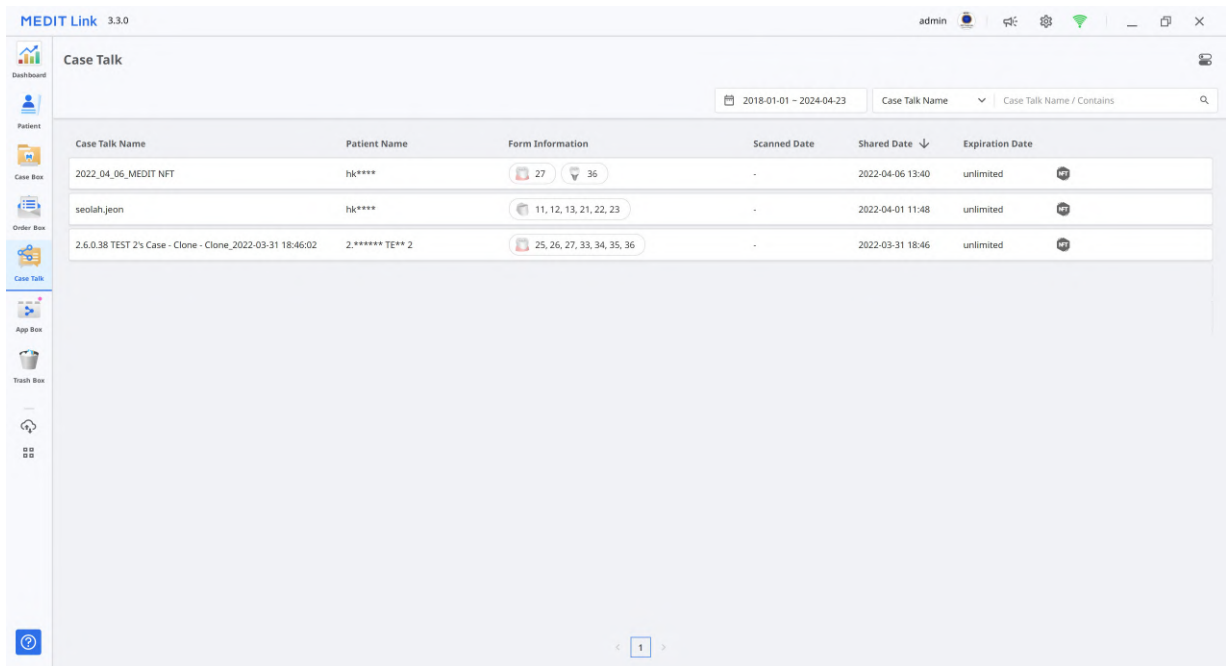


Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2.***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.

App Box

App Box cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau có vai trò bổ sung cho quy trình quét cơ bản và nâng cao năng suất. Bạn có thể tải xuống và cài đặt các ứng dụng được cung cấp để tạo thiết bị nha khoa, phân tích dữ liệu quét, hỗ trợ bạn trong quá trình tư vấn hoặc đơn giản hóa quy trình làm việc.

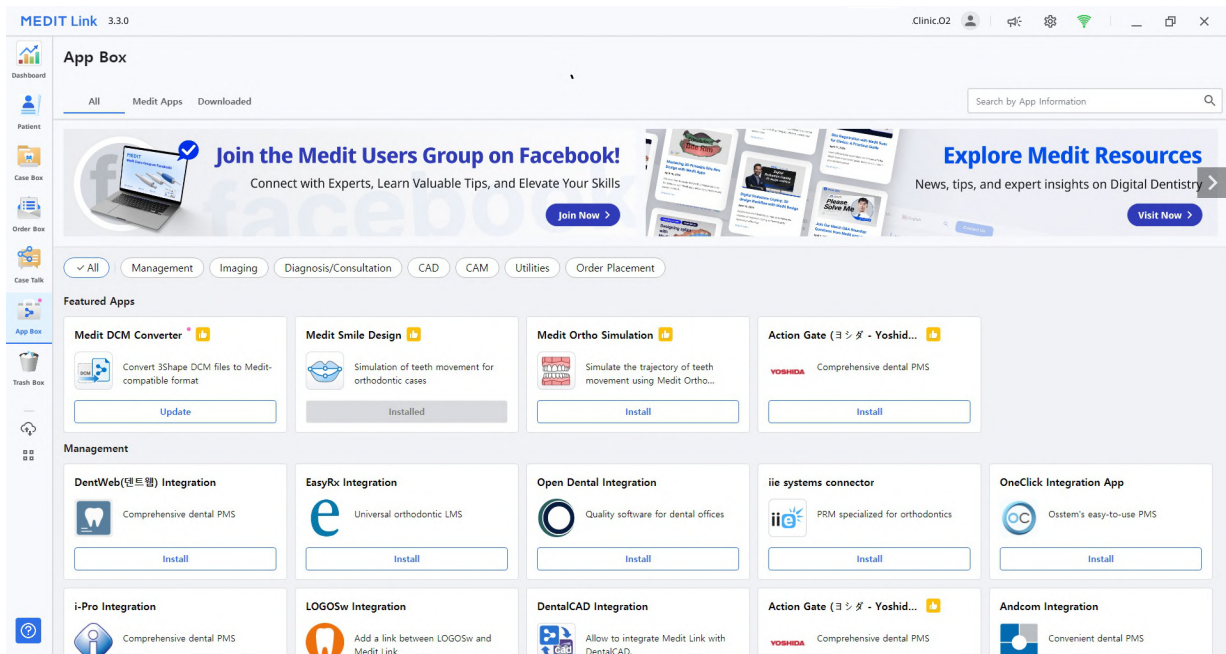

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now >](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now >](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**
Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format
[Update](#)
- Medit Smile Design**
Simulation of teeth movement for orthodontic cases
[Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**
Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...
[Install](#)
- Action Gate (ヨシダ・Yoshida...)**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- EasyRx Integration**
Universal orthodontic LMS
[Install](#)
- Open Dental Integration**
Quality software for dental offices
[Install](#)
- iie systems connector**
PRM specialized for orthodontics
[Install](#)
- OneClick Integration App**
Osstem's easy-to-use PMS
[Install](#)
- i-Pro Integration**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- LOGOSw Integration**
Add a link between LOGOSw and Medit Link
[Install](#)
- DentalCAD Integration**
Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.
[Install](#)
- Action Gate (ヨシダ・Yoshida...)**
Comprehensive dental PMS
[Install](#)
- Andcom Integration**
Convenient dental PMS
[Install](#)

All


Tab "Tất cả" hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng được cung cấp bao gồm ứng dụng gốc do Medit phát triển (Medit Apps) và các ứng dụng đối tác. Ứng dụng đối tác là các ứng dụng tích hợp với đối tác của Medit trong các lĩnh vực nha khoa kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như in 3D, phần mềm CAD/CAM, v.v.

Medit Apps

Tab "Medit Apps" chỉ hiển thị danh sách các ứng dụng gốc do Medit phát triển.

Đã tải về

Tab "Đã tải xuống" hiển thị danh sách các ứng dụng hiện đã cài đặt trên PC của bạn và các ứng dụng được tài khoản người dùng tải xuống trước đây.

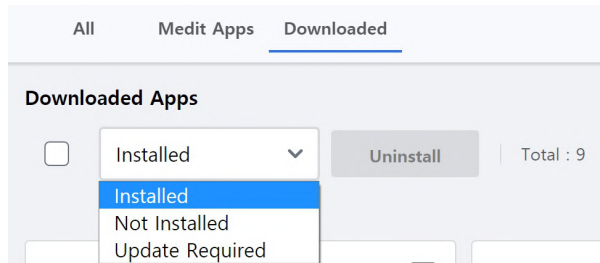

- **Đã cài đặt:** Tùy chọn này chỉ hiển thị các ứng dụng được cài đặt trên PC mà người dùng hiện đang đăng nhập vào.
- **Chưa cài đặt:** Tùy chọn này cho phép bạn xem các ứng dụng bạn đã cài đặt trên PC khác để bạn có thể nhanh chóng cài đặt chúng.
- **Yêu cầu cập nhật:** Tùy chọn này chỉ hiển thị các ứng dụng cần cập nhật mà đã được cài đặt trên PC hiện tại.

Trash Box

Trash Box lưu trữ tạm thời các ca đã xóa. Mọi ca trong Trash Box đều có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

⚠️ Chú ý

Dữ liệu đã xóa khỏi Trash Box sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy tính và máy chủ của bạn và không thể khôi phục được.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Case Synchronization Manager

Case Synchronization Manager giúp bạn tải lên và tải xuống ca trong Medit Link. Bạn có thể tải nhiều ca lên đám mây hoặc tải chúng xuống máy tính cục bộ của bạn.

[illegible]

Tải lên

Tổng số ca / Ca đã chọn	Kiểm tra số lượng của tất cả/các ca đã chọn cần được tải lên.
Tải lên tất cả	Tải tất cả các ca lên đám mây.
Hủy tất cả	Hủy tất cả yêu cầu tải lên.
	Tải ca lên đám mây.
	Hủy tải lên ca.
	Thử tải lên lại ca.

Tải xuống


Tổng số ca / Ca đã chọn	Kiểm tra số lượng của tất cả/các ca đã chọn cần được tải xuống.
Tải xuống tất cả	Tải tất cả ca xuống máy tính.
Hủy tất cả	Hủy tất cả yêu cầu tải xuống.
	Tải ca xuống máy tính.
	Hủy tải xuống ca.
	Thử tải xuống lại ca.

Website liên quan

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các menu chỉ có trên trang web Medit Link, chẳng hạn như My Info, Partners và Membership. Vui lòng tham khảo Medit Link > Trang web Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) và [My Info](#) để xem mô tả chi tiết về các menu trong trang web Medit Link.

Bạn có thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến của Medit, Medit Shop, nơi bạn có thể mua gói bảo hành mở rộng cho máy quét và các sản phẩm khác của Medit, chẳng hạn như ba lô đựng máy quét.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều thông tin khác nhau về việc sử dụng Medit Link. Truy cập vào các tài nguyên đào tạo và thông tin của Medit, chẳng hạn như Trung tâm hỗ trợ Medit, kênh YouTube Medit Academy và nền tảng đào tạo trực tuyến Medit Academy.

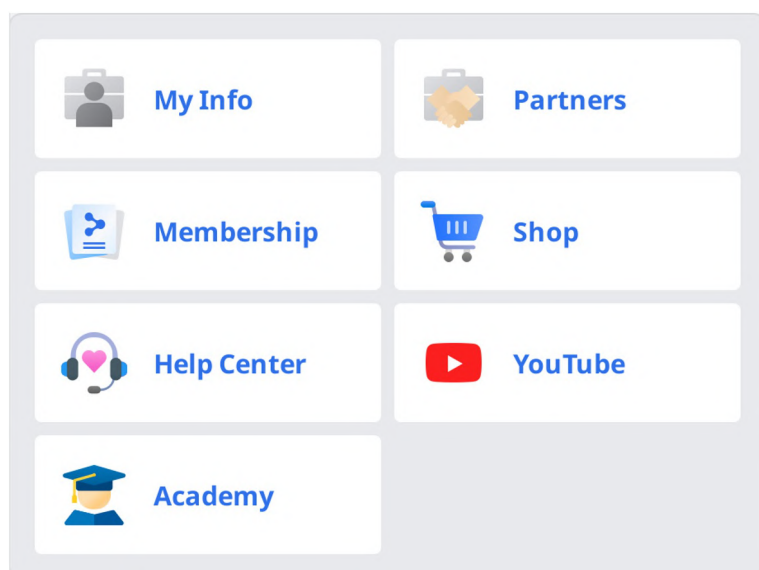

File Viewer

File Viewer nhóm và hiển thị nhiều loại dữ liệu, bao gồm dữ liệu thu được từ các chương trình liên kết với Medit Link và dữ liệu mà người dùng đính kèm.


Công cụ này có các chức năng quản lý cơ bản như hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ và xóa dữ liệu.

File Viewer hỗ trợ các định dạng tệp sau:

- Dữ liệu 3D: STL, OBJ, PLY
- Hình ảnh 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Tệp video: MKV, MP4, AVI, WMV

Cây dữ liệu

Bạn có thể nhóm và hiển thị tất cả dữ liệu của ca trong cây dữ liệu. Bạn cũng có thể hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ trong và xóa dữ liệu khỏi cây dữ liệu.




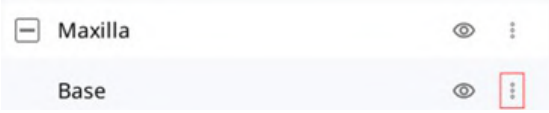
	Hiện/Ẩn	Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu.
	Độ mờ	Thanh trượt xuất hiện khi bạn nhấp vào một trong các dữ liệu trên cây dữ liệu. Bạn có thể di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ mờ của dữ liệu được hiển thị. 
	Xem thêm	Nhấp vào biểu tượng Xem thêm sẽ hiển thị các tính năng bổ sung có sẵn.  • Chỉ hiển thị mục này: Ẩn toàn bộ dữ liệu khác nhưng chỉ hiển thị dữ liệu tương ứng. • Ẩn: Ẩn dữ liệu. • Sao chép: Sao chép dữ liệu và thêm vào nhóm đính kèm. • Xuất: Xuất tệp đã chọn. • Đổi tên: Thay đổi tên của dữ liệu. • Xóa: Xóa dữ liệu.

Lưu ý

Bạn có thể đổi tên dữ liệu khi trực tuyến.

Công cụ điều khiển mô hình

Điều khiển mô hình 3D

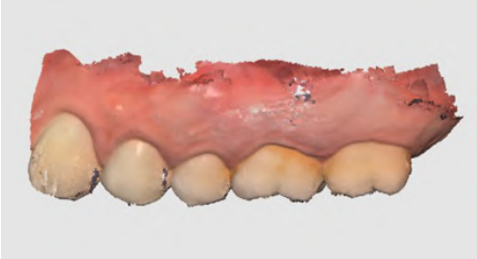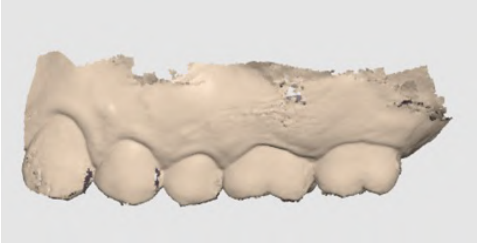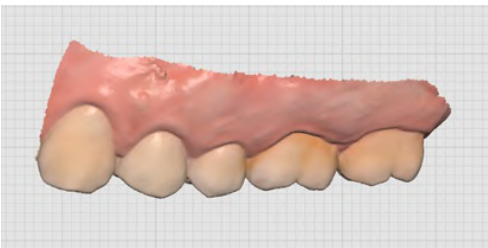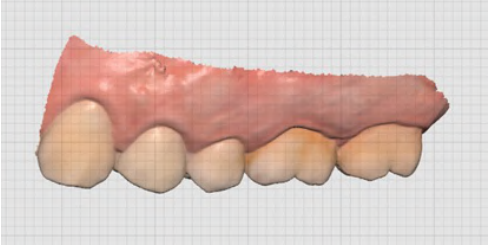	Di chuyển	Di chuyển mô hình.
	Xoay	Xoay mô hình.
	Phóng to/thu nhỏ	Phóng to và thu nhỏ mô hình.
	Thu phóng vừa màn hình	Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
	Chế độ hiển thị mô hình	Bật họa tiết
		Hiển thị dữ liệu bằng màu sắc kết cấu thực. 
		Tắt kết cấu
		Hiển thị dữ liệu đơn màu. 
	Cài đặt lưới (mm)	Bật lưới
		Hiển thị lưới trên nền. 
		Bật lớp phủ
		Phủ lưới lên trên mô hình. 
		Tắt lưới
		Ẩn lưới.

Điều khiển hình ảnh 2D


< >	Hình ảnh tiếp/trước	Di chuyển giữa các hình ảnh.
	Chỉnh sửa	Chỉnh sửa hình ảnh.
 	Kẹp/dán cửa sổ	Bạn có thể tách cửa sổ hình ảnh và điều chỉnh đến vị trí mong muốn. Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ. Cửa sổ sẽ trở về kích thước mặc định khi được khôi phục về vị trí ban đầu.

Công cụ chức năng

Chụp ảnh và ghi chú


Chụp màn hình hiện tại dưới dạng hình ảnh 2D, vẽ lên hình ảnh hoặc thêm ghi chú.


Bạn có thể lưu hình ảnh thành tệp kèm theo ghi chú và gửi dưới dạng tài liệu tham khảo.

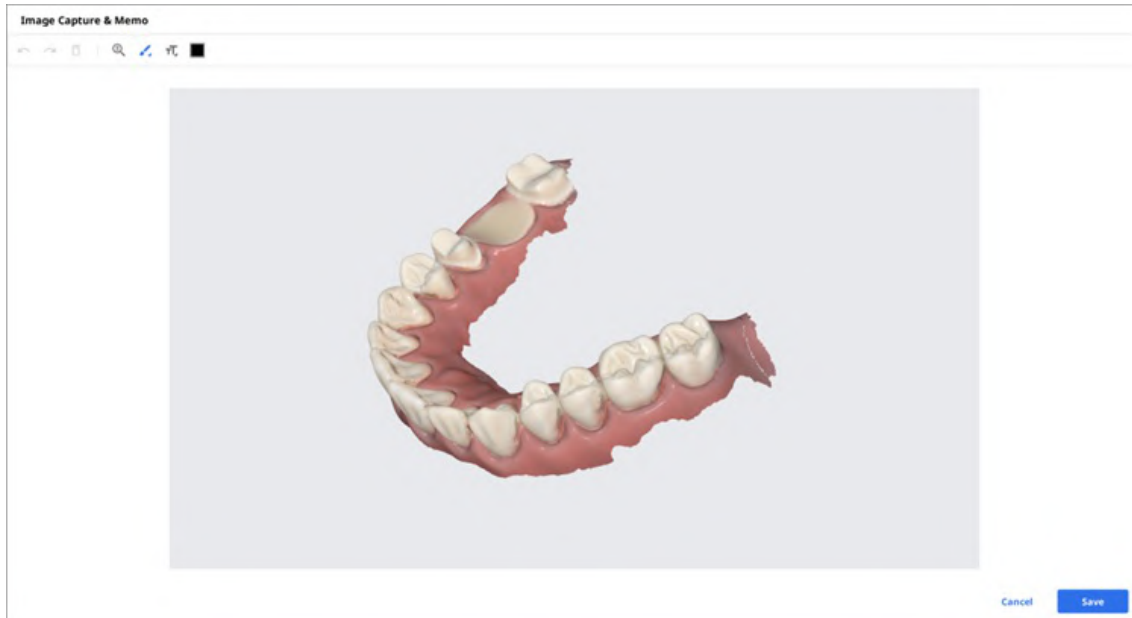

Chụp chỉnh nha

Chụp hình ảnh theo hướng quan sát hiện tại và trên/dưới/trái/phải so với hướng quan sát hiện tại.

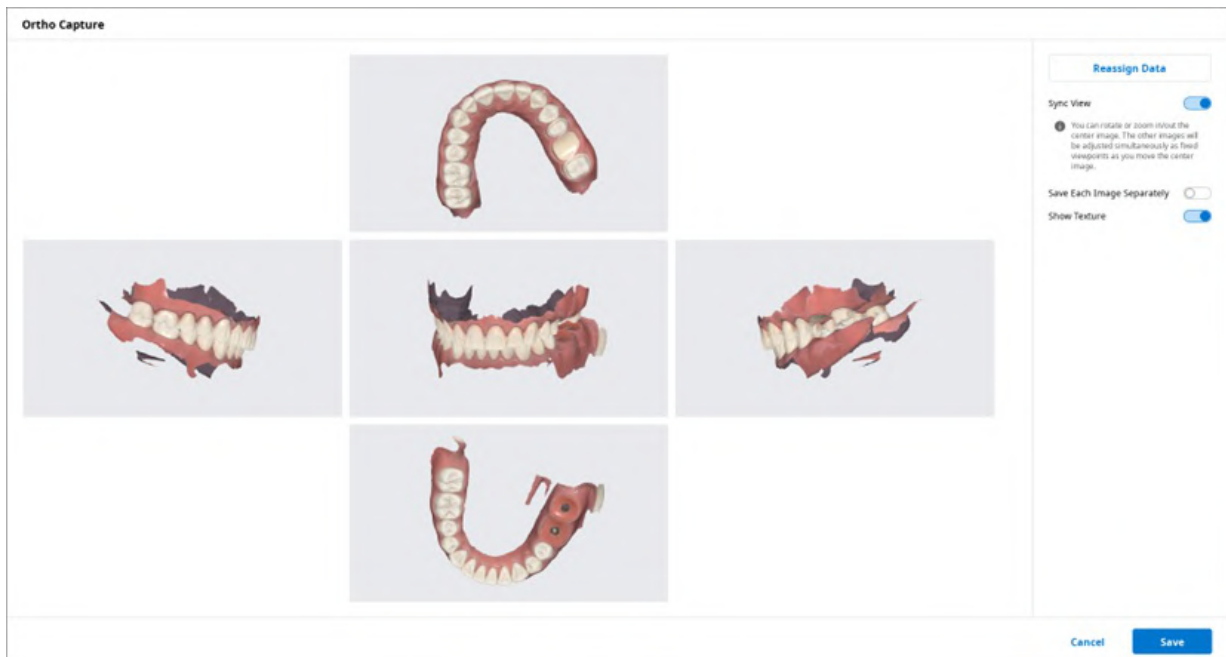

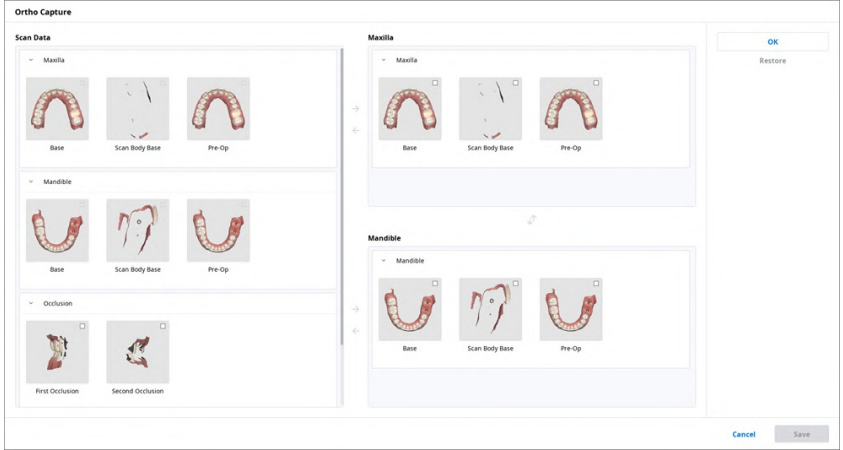Đồng bộ chế độ xem	Khi bật, bạn có thể xoay hoặc phóng to/thu nhỏ hình ảnh trung tâm. Các hình ảnh còn lại sẽ được điều chỉnh đồng thời theo các góc quan sát cố định khi bạn di chuyển hình ảnh trung tâm. Khi tắt, bạn có thể di chuyển, xoay hoặc phóng to/thu nhỏ tất cả hình ảnh riêng lẻ.
Lưu riêng từng hình ảnh	Lưu từng hình ảnh ở độ phân giải cao.
Hiện kết cấu	Bật/tắt kết cấu cho mô hình.
Chỉ định lại dữ liệu	Thay đổi dữ liệu cho hàm trên/hàm dưới bằng tính năng Chỉ định lại dữ liệu. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đã thay đổi để tạo và sử dụng hình ảnh thu được từ Chụp chỉnh nha.  • Dữ liệu quét: Toàn bộ dữ liệu quét của ca đều hiển thị. • Hàm trên: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm trên được hiển thị. • Hàm dưới: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm dưới được hiển thị.


Làm đầy lỗ

Làm đầy lỗ trong dữ liệu lưới 3D.



Cắt


Tính năng cắt cung cấp nhiều công cụ khác nhau để chỉnh sửa dữ liệu.

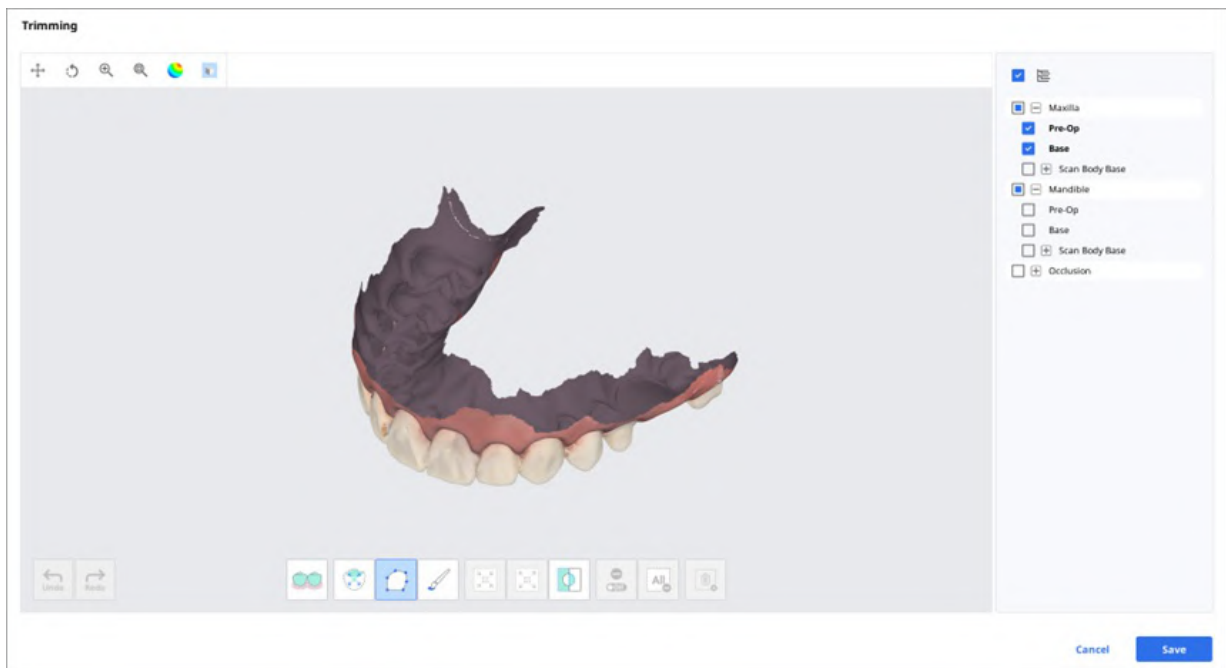

Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu lưới 3D đã chọn bằng các công cụ khác nhau nằm ở dưới cùng cửa sổ.

Chọn		Chọn răng thông minh	Tự động chọn tất cả răng trên hàm, bỏ qua phần nướu. Lưu ý Chức năng này chỉ khả dụng đối với dữ liệu quét thu được bằng Medit Scan for Clinics khi bật tùy chọn "Sử dụng GPU".
		Chọn một răng thông minh	Tự động chọn phạm vi một chiếc răng với một cú nhấp chuột. Bạn có thể nhấp hoặc kéo vào răng.
		Chọn bằng hình đa tuyến	Chọn tất cả các thực thể trong một hình đa tuyến được vẽ trên màn hình.
		Chọn bằng cọ vẽ	Chọn tất cả thực thể trên một đường vẽ tự do trên màn hình. Chỉ phần mặt trước mới được chọn. Cọ vẽ có ba kích cỡ khác nhau.
Điều chỉnh vùng đã chọn		Thu nhỏ vùng đã chọn	Thu nhỏ vùng đã chọn mỗi lần bạn nhấn nút.
		Mở rộng vùng đã chọn	Mở rộng vùng đã chọn mỗi lần bạn nhấn nút.
		Đảo ngược vùng đã chọn	Đảo ngược lựa chọn.
Bỏ chọn		Chọn/Bỏ chọn	Khi bật, bỏ chọn vùng bằng nhiều công cụ khác nhau.
		Xóa tất cả lựa chọn	Xóa tất cả vùng đã chọn.
		Xóa vùng đã chọn	Xóa dữ liệu khỏi vùng đã chọn.

1. Chọn vùng bạn muốn cắt bằng các công cụ chọn vùng.

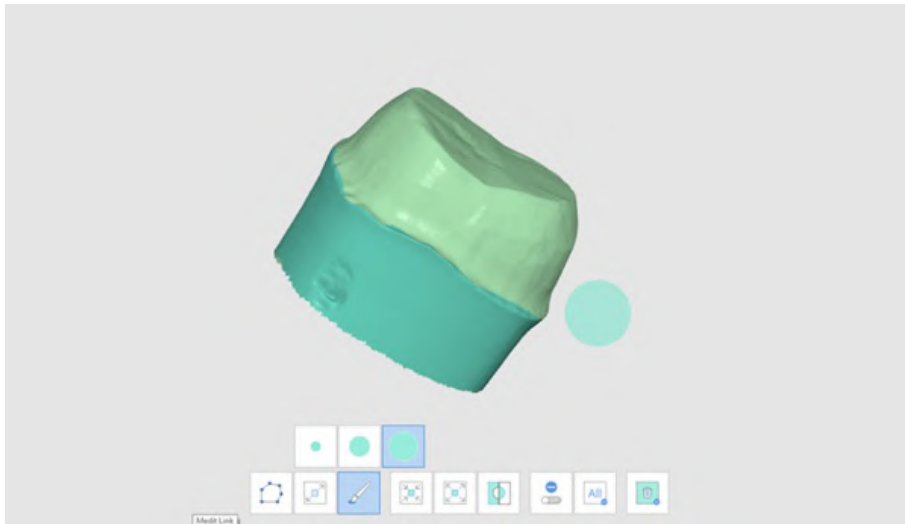


Lưu ý


Công cụ cắt đa tuyến chọn tất cả các thực thể trong hình đa tuyến được vẽ trên màn hình, còn công cụ cắt bằng cộ vẽ chỉ chọn dữ liệu mặt trước.

2. Bạn có thể đảo ngược, thu nhỏ hoặc mở rộng vùng đã chọn bằng ba công cụ sau.


- Đảo ngược vùng đã chọn

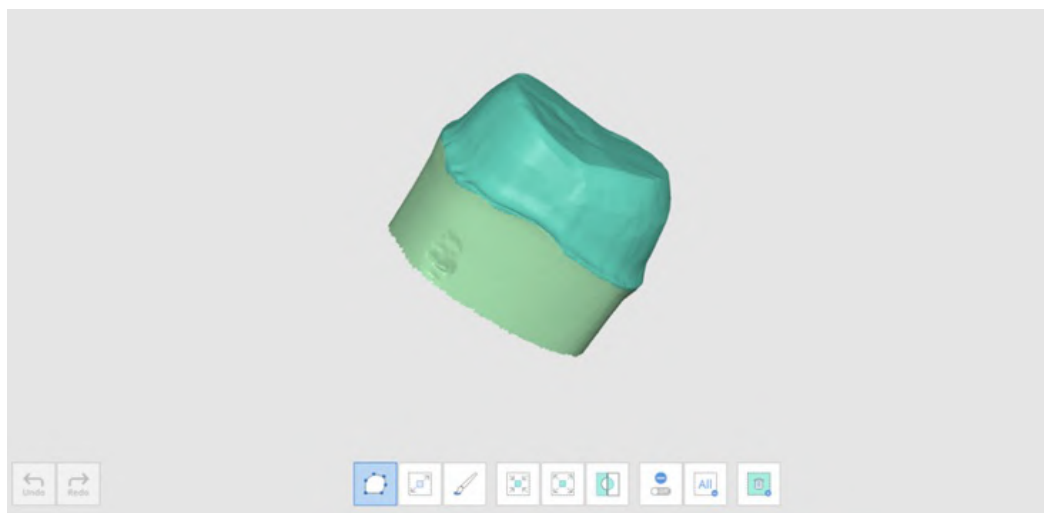

- Thu nhỏ vùng đã chọn

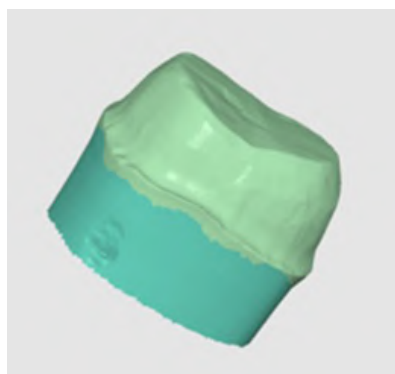


- Mở rộng vùng đã chọn

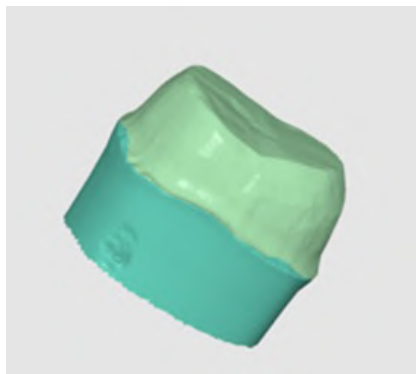




3. Bạn có thể bỏ chọn các vùng đã chọn bằng công cụ Xóa vùng đã chọn.

Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cắn

Tối ưu hóa căn chỉnh khớp cắn. Bạn có thể chọn dữ liệu đích và điều chỉnh việc căn chỉnh khớp cắn.

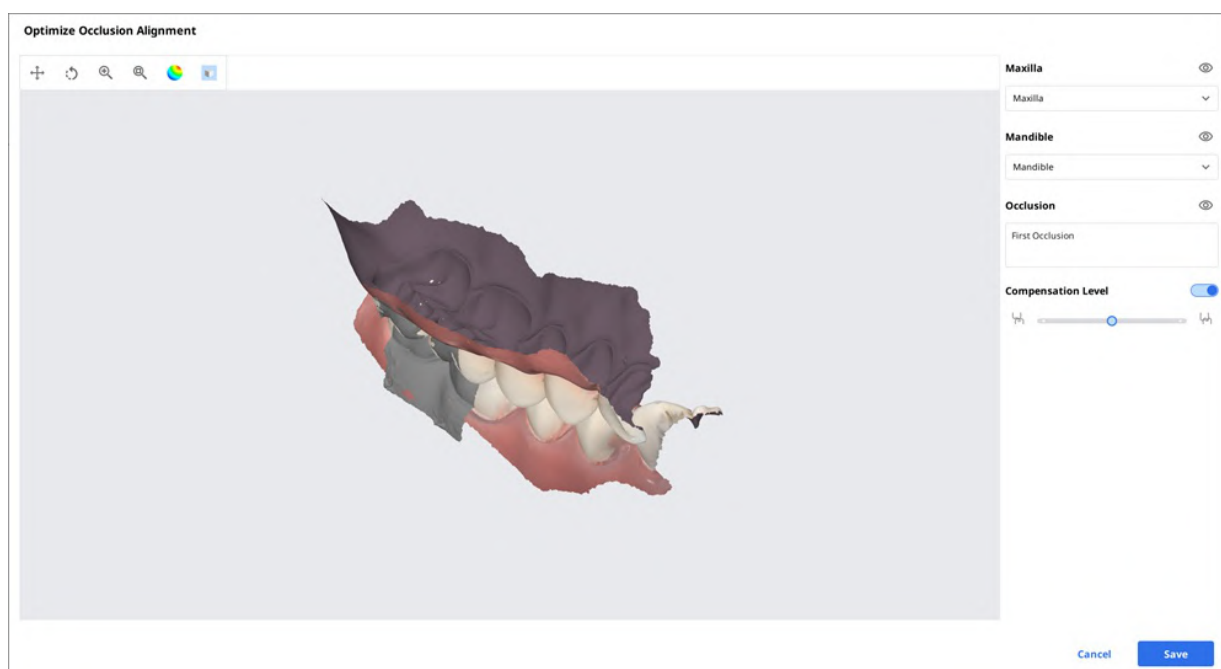


Mức bù

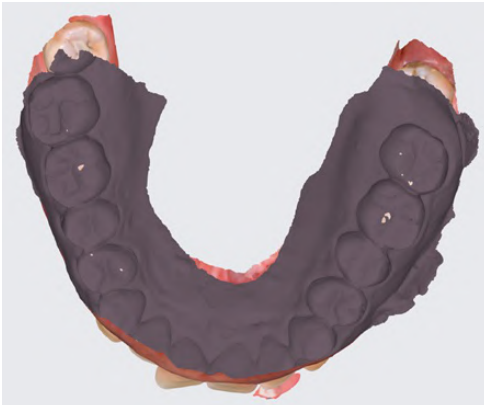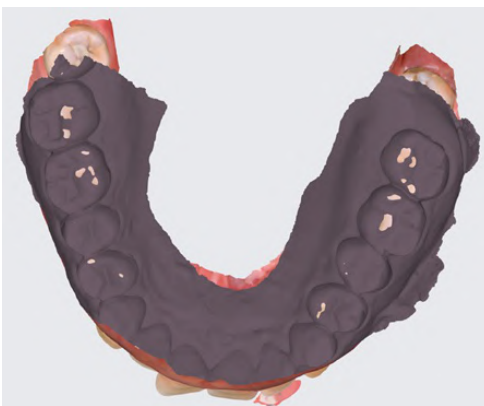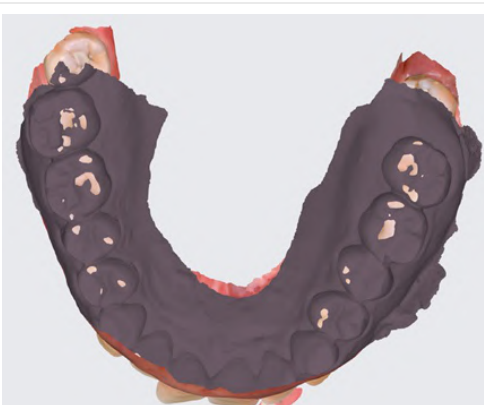Thấp	Compensation Level ☒ I_{ph} <input type="range"/> I_{ph}	
Trung bình	Compensation Level ☒ I_{ph} <input type="range"/> I_{ph}	
Cao	Compensation Level ☒ I_{ph} <input type="range"/> I_{ph}	
Tắt	Compensation Level ☐ I_{ph} <input type="range"/> I_{ph}	

Chuyển động hàm dưới

Bạn có thể phát các chuyển động của hàm dưới được ghi lại trong Medit Scan for Clinics để xem tiếp xúc khớp cắn động giữa răng trên và răng dưới.

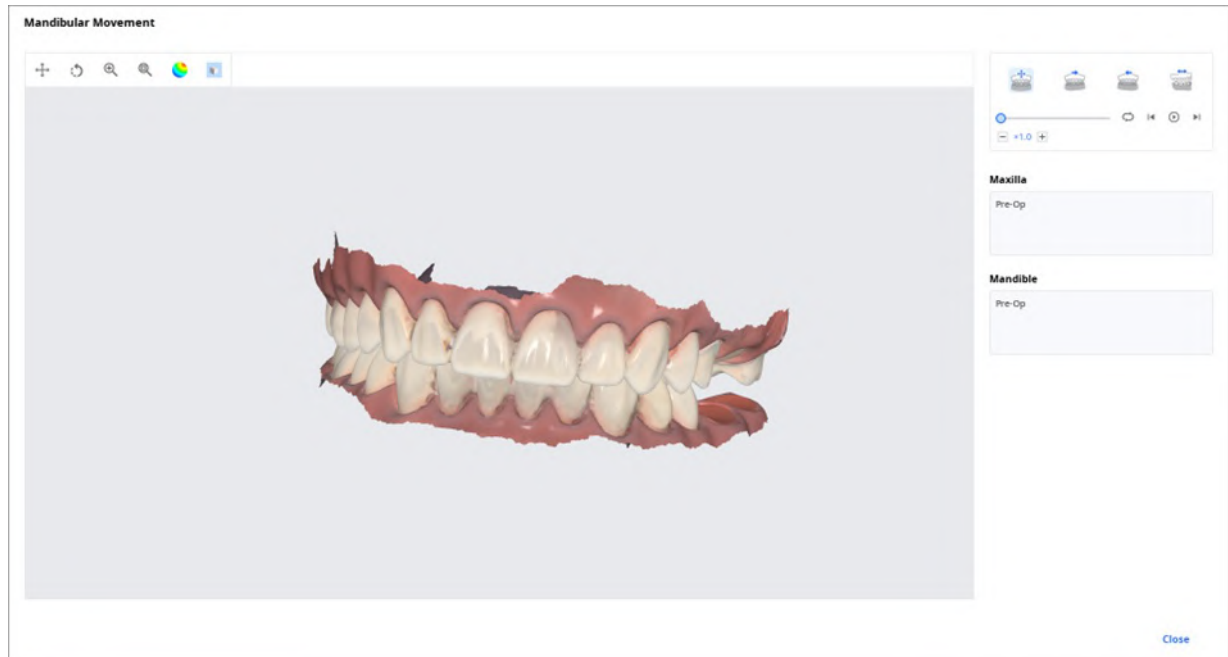

	Chuyển động tự do	Phát bản ghi lại chuyển động tự do của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên trái	Phát bản ghi lại chuyển động sang trái của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên phải	Phát bản ghi lại chuyển động sang phải của hàm dưới.
	Chuyển động ra trước	Phát bản ghi lại chuyển động về phía trước của hàm dưới.

Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer

Bạn có thể nhận được nhiều kết quả dữ liệu khớp cắn từ Ứng dụng Medit Scan.

Medit Link cung cấp chức năng quản lý kết quả thông qua "File Viewer".

Cách quản lý nhiều kết quả


Khi người dùng nhận được nhiều kết quả khớp cắn từ Medit Scan for Clinics, Medit Link cung cấp tùy chọn để chọn một kết quả.

Danh sách kết quả được liệt kê theo tên và bạn có thể chọn một mục.

Mô hình đã chọn sẽ hiển thị trong "Cây dữ liệu" và "Khu vực hiển thị mô hình".



Bạn có thể thu gọn danh sách và thay đổi mục bằng biểu tượng mũi tên.

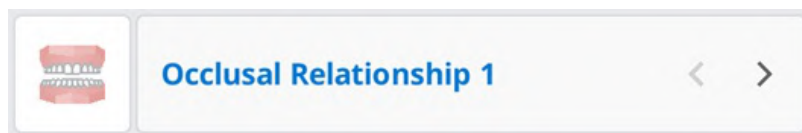

Tùy chọn hiển thị

Bạn có thể thay đổi Tùy chọn hiển thị để tùy chỉnh bố cục của danh sách ca trong Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Bộ lọc trạng thái

Hiển thị hoặc ẩn từng bộ lọc thể hiện trạng thái của ca. Bộ lọc trạng thái bị ẩn không hiển thị trên màn hình trong Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ca cần thiết bằng bộ lọc trạng thái.

- Bạn có thể nhấp vào trạng thái bạn muốn xem để chỉ hiển thị các ca ở trạng thái đó.
- Bạn có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn lọc sau:

Hộp	Bộ lọc trạng thái
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Mục trong bảng

Chọn các mục để hiển thị trong danh sách ca tại Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Bạn có thể thay đổi thứ tự các mục trong bảng hoặc điều chỉnh độ rộng cột của bảng trong chế độ hiển thị dạng danh sách để tối ưu hóa môi trường người dùng đến mức tốt nhất.

Mỗi hộp sẽ có các mục trong bảng sau:

Hộp	Mục trong bảng
Patient	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Giới tính / Số lượng ca / Ngày đăng ký / Ngày sinh
Case Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày sinh / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
Order Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng
In Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám
Work Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày quét / Tên phòng khám / Ngày đặt hàng

Loại chế độ xem

Thay đổi loại chế độ hiển thị giữa Chế độ xem thư viện và Chế độ xem danh sách trên Case Box.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn loại chế độ hiển thị sau:

Hộp	Loại chế độ xem
Patient	Chế độ xem danh sách
Case Box	Chế độ xem danh sách / Chế độ xem thư viện
Order Box	Chế độ xem danh sách
In Box	Chế độ xem danh sách
Work Box	Chế độ xem danh sách

Nhóm

Chọn tùy chọn nhóm để phân loại và sắp xếp lại các ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn nhóm sau:

Hộp	Tùy chọn nhóm
Case Box	Không / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng
Order Box	Không / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
In Box	Không / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
Work Box	Không / Ngày yêu cầu giao hàng



Patient, Case Talk và Trash Box không có tùy chọn nhóm.

Sắp xếp

Chọn tùy chọn sắp xếp để thay đổi thứ tự ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn sắp xếp sau:

Hộp	Nhóm	Tùy chọn sắp xếp
Patient	-	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Ngày sinh / Ngày đăng ký / Số lượng ca
Case Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Tên bệnh nhân	Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Tên phòng lab
Order Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab
In Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Tên phòng khám
Work Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám


Lưu ý

Case Talk và Trash Box không có tùy chọn sắp xếp.

Lọc và Tìm kiếm

Lọc theo bệnh nhân

Lọc và hiển thị ca theo tên bệnh nhân. Bạn có thể tạo danh sách bằng cách lọc riêng ra những bệnh nhân cần thăm khám.

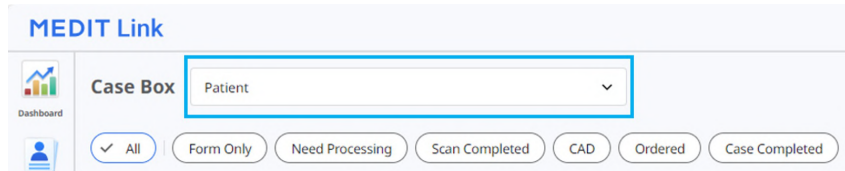


MEDIT Link

Case Box Patient

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Nhập tên bệnh nhân.

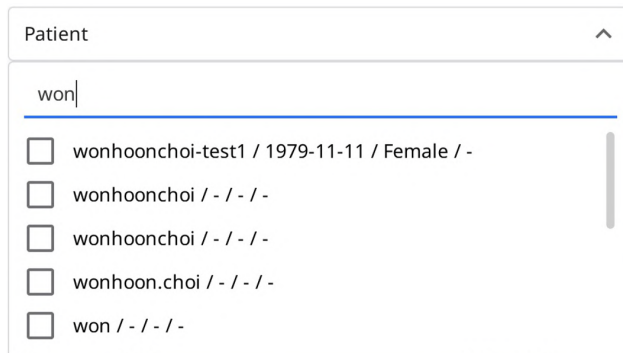


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Chọn bệnh nhân trong danh sách kết quả tìm kiếm bên dưới.

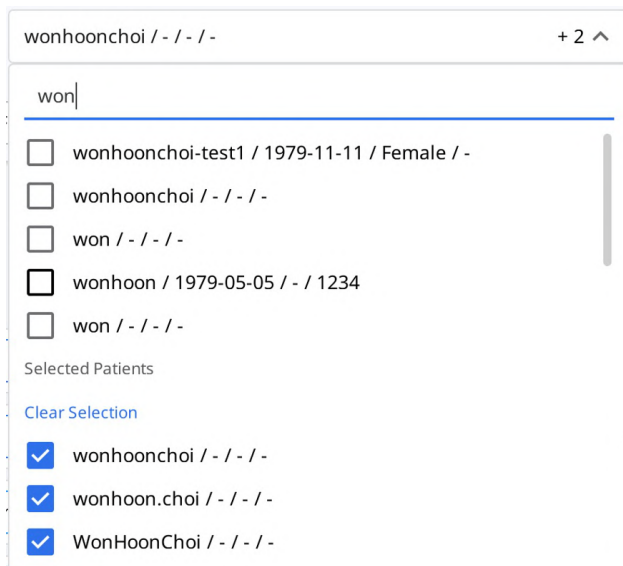

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trên danh sách.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Lọc theo ngày

Lọc và hiển thị những ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Chọn khoảng thời gian từ danh sách.

- Tất cả: Hiển thị tất cả các ca.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc để hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đó.
- Hôm nay: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong hôm nay.
- Hôm qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối vào hôm qua.
- 7 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- 30 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 30 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- Tháng này: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong tháng này.
- Tháng trước: Hiển thị các ca được sửa đổi vào tháng trước.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Chức năng tìm kiếm nâng cao

Tận dụng các chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm được thông tin bạn cần.

All Search / Contains

Mỗi hộp sẽ có các Tiêu chí tìm kiếm như sau:

Patient	Tất cả, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân
Case Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng lab
Order Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab, ID đơn hàng
In Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Work Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Case Talk	Tên Case Talk (Chứa), Tên bệnh nhân (Bằng)
Trash Box (Phòng khám)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng lab, Người xóa
Trash Box (Phòng lab)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, Người xóa

Bạn có thể chọn Tiêu chí tìm kiếm và chọn logic Chứa hoặc Bằng.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca

Tạo ca

Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Nhập thông tin cơ bản như tên bệnh nhân và tên ca.
 - Nếu bạn nhập tên không có trong danh sách bệnh nhân thì bệnh nhân mới sẽ được thêm vào.
 - Nếu bạn nhập tên đã có trong danh sách bệnh nhân thì bạn có thể chọn tên đó từ danh sách.
 - Nếu bạn đăng ký ca cho bệnh nhân hiện có, hãy nhấp vào biểu tượng Danh sách bệnh nhân để chọn bệnh nhân hiện có.



- Bạn có thể đăng ký bệnh nhân mới hoặc chỉnh sửa thông tin của bệnh nhân hiện có trong hộp thoại Danh sách bệnh nhân.

Patient List

Select a patient on the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	8888				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.

4. Nhấp vào "Đăng ký & Quét" để hoàn tất quy trình đăng ký và tiến hành quét.
- **Đăng ký:** Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính. Tính năng này rất hữu ích khi đăng ký nhiều ca.
 - **Đăng ký & Quét:** Di chuyển đến tab Mẫu để đăng ký thông tin mẫu cho ca.

Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Nhập hoặc chọn tên phòng khám.
3. Nhập tên bệnh nhân và tên ca. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.
4. Nhập ngày giao dự kiến dựa trên ngày hoàn thành công việc.
5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính sau khi đăng ký ca.

Chỉnh sửa ca

Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

2. Nhấp vào biểu tượng "Tìm kiếm" để đổi tên bệnh nhân. Xin lưu ý rằng bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa tên.; thay vào đó, bạn có thể tìm tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại và có thể chỉnh sửa thông tin bệnh nhân từ danh sách.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Kiểm tra tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại.
4. Để tạo bệnh nhân mới, hãy nhấn nút "Bệnh nhân mới".
5. Sử dụng nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin về bệnh nhân đã đăng ký.
6. Nhấp vào "Áp dụng" để hoàn tất quy trình.

Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Nhấp vào "Áp dụng" sau khi chỉnh sửa xong.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa thông tin của các ca đã nhận qua đặt hàng trong In Box.

Sao chép ca

Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Bạn sẽ được hỏi về loại thông tin bạn muốn sao chép vào ca mới.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Chọn chỉ sao chép thông tin mẫu hoặc tất cả dữ liệu.
4. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.

Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Sao chép tất cả dữ liệu để tạo một ca mới.
3. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.


Xóa ca

Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Xóa".



2. Nhấp vào "OK" để xóa ca.

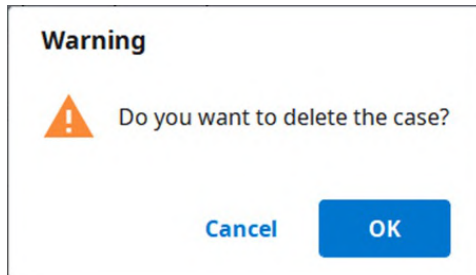

3. Ca đã xóa sẽ được chuyển vào Trash Box và có thể được khôi phục nếu cần.

Thông tin mẫu

Bạn có thể nhập thông tin mẫu dựa trên chương trình đã kết nối và loại hình điều trị.

Thông tin bạn nhập sẽ được sử dụng làm thông tin cơ bản để thực hiện chương trình quét hoặc CAD và đặt hàng.

Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box

Nhập vào Tab Mẫu

1. Chọn xem bạn sẽ nhập thông tin điều trị theo răng hay hàm.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê đơn hàng.
3. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box

Nhập vào Tab Mẫu


1. Chọn chương trình quét muốn sử dụng.
2. Chọn một trong các tùy chọn sau để xác định chiến lược quét: Răng/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Phương pháp có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quét đã chọn.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Răng	☐	☐
Hàm	☐	☐
Flexible Multi-Die	☒	☐
Multi-Die	☒	☐

4. Chọn số răng, hàm hoặc die cho quy trình quét.
5. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê.
6. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Nối răng thành cầu

Bạn có thể nối nhiều răng lại thành một cầu răng khi áp dụng cùng một vật liệu cho nhiều răng liền kề. Nhấp vào biểu tượng cầu bên cạnh các răng đã chọn để nối hoặc bỏ nối các răng này.

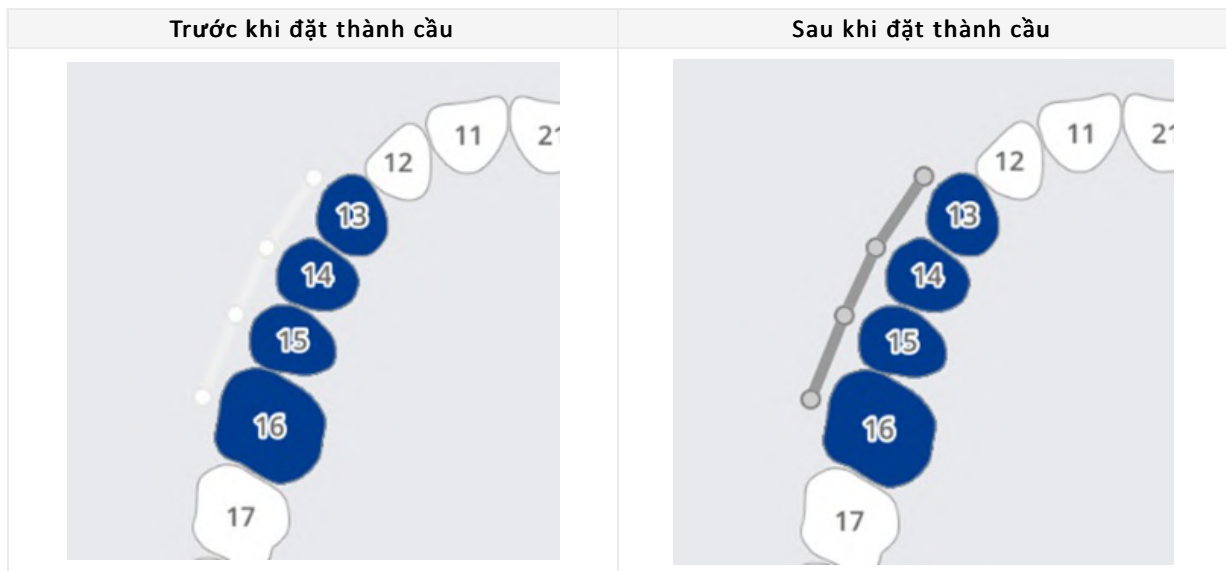

Cài đặt tùy chọn quét

Bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn quét khác nhau tùy thuộc vào chương trình đang sử dụng.

Các tùy chọn quét đã chọn sẽ được chuyển đến từng chương trình quét.

Medit Scan for Labs

Tùy chọn chung

	Răng liền kề	Đánh dấu các răng đã sửa soạn và răng liền kề rồi chuyển thông tin này đến chương trình quét.
	Răng đối xứng	Tự động đánh dấu đối xứng rồi chuyển thông tin này tới chương trình quét.
	Giá khớp	Hiển thị tùy chọn chọn giá khớp trong chương trình quét.
	Đánh dấu chuyển động	Cho phép sử dụng chiến lược quét "Chuyển động hàm" trong chương trình quét.

Tùy chọn theo răng

	Scan Body	Cho phép cài đặt chiến lược quét scan body trong chương trình quét.
	Quét trước phục hình	Cho phép cài đặt chiến lược quét mô hình trước phục hình trong chương trình quét.
	Quét răng sáp	Cho phép cài đặt chiến lược quét răng sáp trong chương trình quét.

Thêm vào yêu thích

Bạn có thể đăng ký một sản phẩm làm mục yêu thích để chọn nhanh sản phẩm đó.

Danh sách yêu thích đã đăng ký được quản lý dưới dạng mẫu và có thể được chia sẻ thông qua tính năng xuất và nhập.

Thêm vào yêu thích

1. Chọn số răng.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Bạn có thể đăng ký Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc làm mục yêu thích ngay cả khi không chọn toàn bộ.
3. Nhấp vào biểu tượng "Ngôi sao".

4. Tổ hợp tham số đã chọn, ngoại trừ số răng, đều nằm trong danh sách tìm kiếm yêu thích của bạn.

Quản lý mẫu yêu thích

Bạn có thể đăng ký, quản lý và chia sẻ các loại mẫu khác nhau.

Thêm	Thêm mẫu mới.
Đổi tên	Đổi tên mẫu hiện tại.
Xóa	Xóa mẫu hiện tại.
Xuất	Xuất mẫu hiện tại dưới dạng tệp.
Nhập	Nhập một tệp mẫu.

Thực hiện quét/CAD

Quy trình quét

Bạn tiến hành quét dựa trên thông tin đã nhập.

1. Nhập/lưu thông tin điều trị và chọn tùy chọn quét cần thiết.
2. Nhấp vào nút "Quét" ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Quy trình CAD

Medit Link cung cấp ứng dụng tích hợp DentalCAD để kết nối Medit Link với DentalCAD.

1. Cài đặt ứng dụng DentalCAD Integration trong App Box.
2. Truy cập chi tiết ca và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration trên Trình khởi chạy nhanh.
3. Chỉ định đường dẫn đến ứng dụng DentalCAD được cài đặt trên PC của bạn trong hộp thoại bật lên.
4. Nhập chi tiết ca của ca được quét và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration. Thao tác này sẽ bật lên hộp thoại để tạo tệp dentalProject.
5. Đăng ký thông tin mẫu cho DentalCAD và nhấp vào "Mở" để mở chương trình CAD.
6. Nếu bạn cài đặt ứng dụng DentalDB Integration, kết quả CAD sẽ tự động được gửi đến đường dẫn lưu đã chỉ định trong exocad. (Chỉ tài khoản phòng lab)


Sử dụng ứng dụng hỗ trợ

Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ

Bạn có thể trực tiếp chạy các ứng dụng hỗ trợ khác nhau bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng đã cài đặt trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng.



Quản lý trình khởi chạy ứng dụng

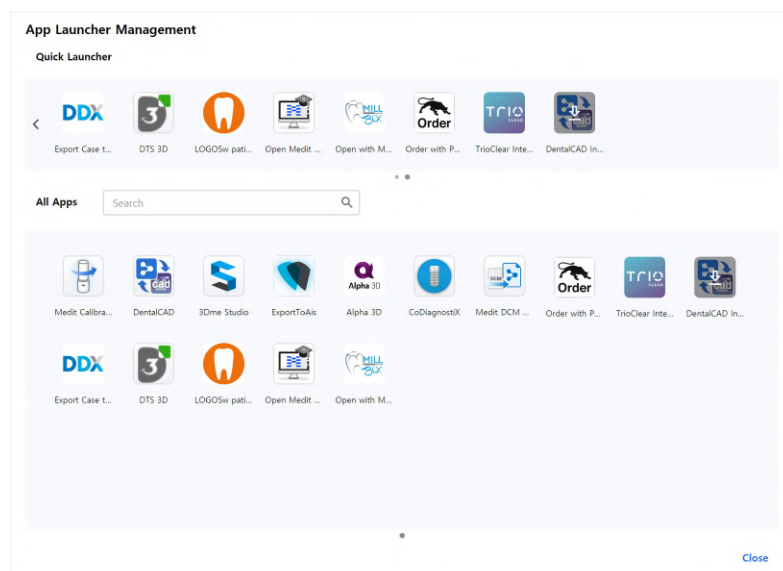

Trình khởi chạy nhanh

Bạn có thể xác định những ứng dụng hiển thị trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng hoặc bạn có thể tạo thư mục để nhóm các ứng dụng tương tự lại với nhau nhằm sắp xếp chúng.

Tất cả ứng dụng

Tất cả các ứng dụng bạn đã cài đặt sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng để thêm ứng dụng đó vào Trình khởi chạy nhanh. Khi nhấp chuột phải vào menu ngữ cảnh, bạn cũng có thể chọn chạy, cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Nhận tệp kết quả

Xuất tệp kết quả quét

Medit Link không chỉ cho phép chia sẻ kết quả với đối tác thông qua đặt hàng mà còn cho phép bạn lưu trữ tệp kết quả ở định dạng tệp mong muốn bằng chức năng xuất.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export


Xuất tệp đến	Chỉ định đường dẫn đến vị trí bạn muốn lưu trữ tệp kết quả.
Tên thư mục	Hệ thống tạo một thư mục mới và lưu trữ tất cả tệp kết quả trong đó. Tên thư mục mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên thư mục. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên thư mục.
Tên tệp	Đặt tên tệp nhận kết quả. Tên tệp mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên tệp. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên tệp
Loại	Chọn chương trình thiết kế bạn muốn sử dụng. Medit Link sẽ tự động điều chỉnh tệp theo lựa chọn của bạn để bạn tiếp tục thiết kế mà không cần can chỉnh trực tiếp thêm.
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén tệp	Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất.
Kết hợp lưới riêng lẻ	Kết hợp kết quả của hàm trên hoặc hàm dưới với từng răng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn không thể nhập nhiều tệp vào một chương trình.
Xuất tất cả quan hệ khớp cắn	Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp cắn thì bạn có thể đồng thời xuất tất cả các kết quả này.
Lưu thông tin ca dưới dạng PDF	Lưu thông tin ca dưới dạng PDF kèm kết quả.

Xuất tệp kết quả từ danh sách ca

Bạn có thể sử dụng tùy chọn "Xuất" bên trên danh sách ca trong Case Box và Work Box để xuất đồng thời các tệp kết quả của một hoặc nhiều ca.

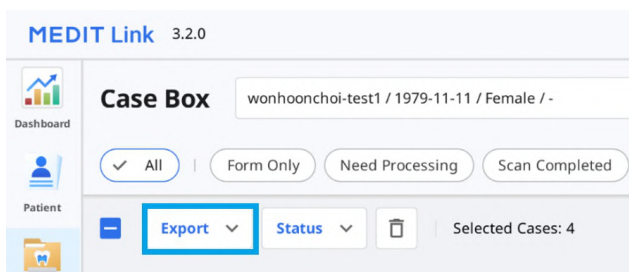

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Chọn từ danh sách tất cả các ca có tệp kết quả bạn muốn xuất.

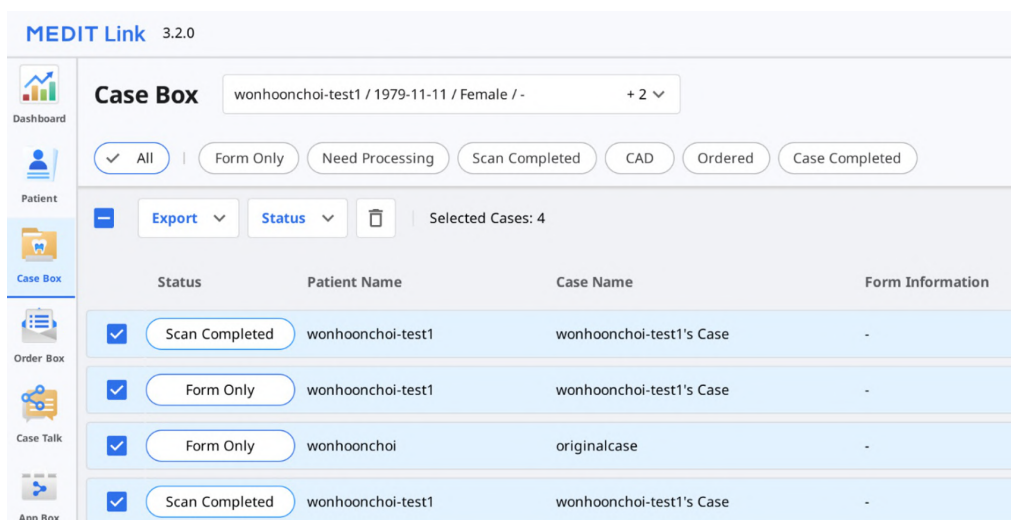

3. Nhấp vào "Xuất" và chọn "Tệp kết quả."

Export

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Đặt thư mục đích, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

meditMesh

OBJ

PLY

STL

Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

JPG

JPEG

PNG

BMP

Compress Files

Combine Individual Mesh

Export All Occlusal Relationship

Save Case Information as PDF

Close

Export

Lưu ý

Không thể chỉnh sửa trường "Tên thư mục" và "Tên tệp" khi xuất tệp của nhiều ca.

Tên thư mục và tên tệp được tạo tự động theo quy tắc bạn đã đặt cho tùy chọn "Quy tắc đặt tên thư mục" và "Quy tắc tên tệp" trong Cài đặt > Tùy chọn xuất.

5. Nhấp vào "Xuất."

6. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

Xuất tệp kết quả từ File Viewer

106

Bạn có thể sử dụng biểu tượng "Xuất" ở góc trên cùng bên phải của tab File Viewer để xuất tệp kết quả quét của một ca.

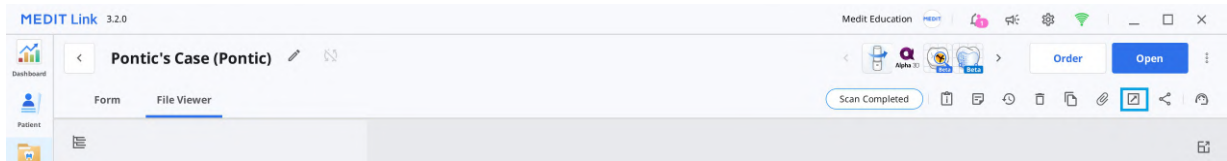

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.
3. Nhấp vào biểu tượng "Xuất" ở góc trên bên phải của tab File Viewer.



4. Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#) [Export](#)

5. Trong tab "Danh sách tệp", bạn có thể chọn các tệp cần thiết cho ca bằng cách bỏ chọn những tệp không cần thiết.

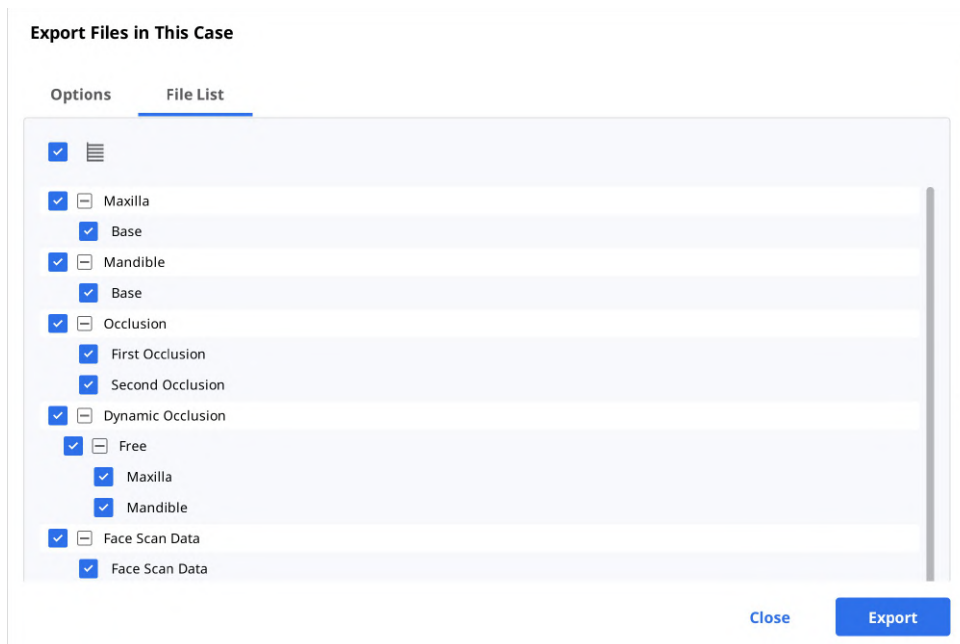


6. Nhấp vào "Xuất."

7. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

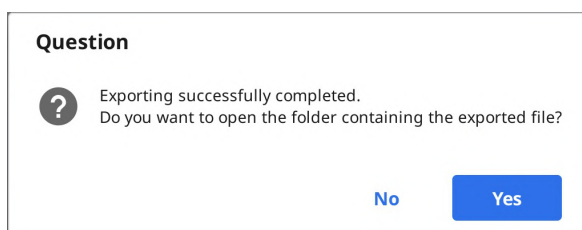

Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu

Bạn có thể xuất một hoặc nhiều tệp trong một nhóm dữ liệu cụ thể từ menu mở rộng trong file viewer.

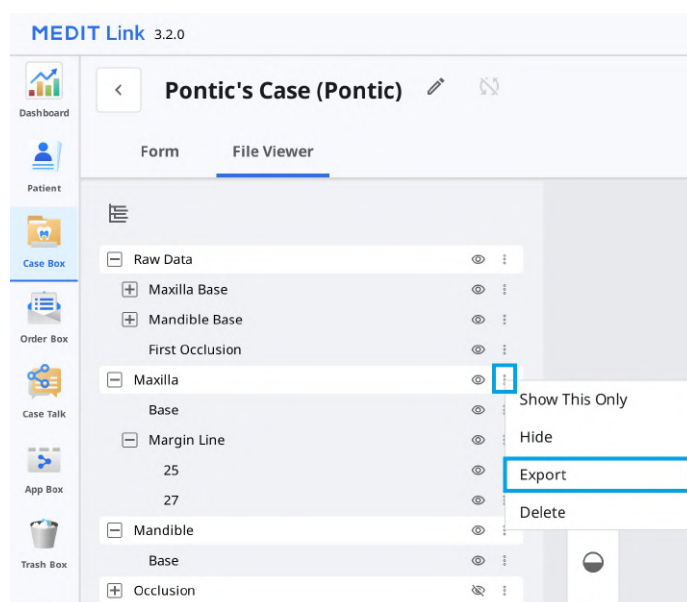


1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.

2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.

3. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh nhóm dữ liệu hoặc thực thể trong cây dữ liệu trong tab File Viewer.

4. Sau đó nhấp vào "Xuất."

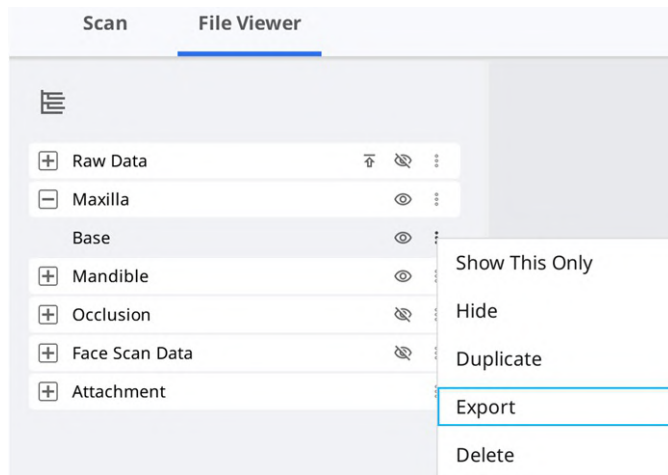

5. Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

6. Bạn có thể thấy rằng chỉ những tệp bạn chọn trong cây dữ liệu là tệp được chọn trong Danh sách tệp.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close **Export**

- Nhấp vào "Xuất."
- Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Xuất danh sách ca dưới dạng CSV

Medit Link cung cấp chức năng xuất danh sách ca ở định dạng CSV.

Bạn có thể xuất danh sách ca kèm thông tin cơ bản và dễ dàng quản lý ca.

- Truy cập vào Case Box, Order Box, In Box, hoặc Work Box.
- Chọn ca mà bạn muốn xuất.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female f- +2

Export Status Selected Cases: 4

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

- Nhấp vào "Xuất" và chọn "Danh sách ca (như hiển thị)" hoặc "Danh sách ca (tất cả mục)."

Export Status

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

Lưu ý

Danh sách ca (như hiển thị): Xuất danh sách ca kèm các mục như đang hiển thị trên màn hình. Đi tới Tùy chọn hiển thị > Mục trong bảng để hiển thị hoặc ẩn các mục theo ý muốn.

Danh sách ca (tất cả mục): Xuất danh sách ca kèm tất cả các mục, bao gồm Trạng thái, Tên ca, Ngày sinh, Thông tin mẫu, Ngày sửa cuối cùng, Ngày quét, Ngày đặt hàng và Tên phòng lab.

4. Xác định đường dẫn và tên tệp, sau đó lưu danh sách.
5. Danh sách ca được lưu dưới dạng tệp CSV.


Xuất đường viền dấu

Medit Scan for Clinics có chức năng tạo đường viền dấu và Medit Link có thể chuyển đường viền dấu đến chương trình CAD.

Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc

Nhìn chung, Medit Link chuyển đổi đường viền dấu thành màu sắc và xuất đồng thời kết quả cùng hàm trên hoặc hàm dưới. Bạn có thể tạo đường viền dấu trong cad có tham chiếu thông tin màu sắc.

Ví dụ:

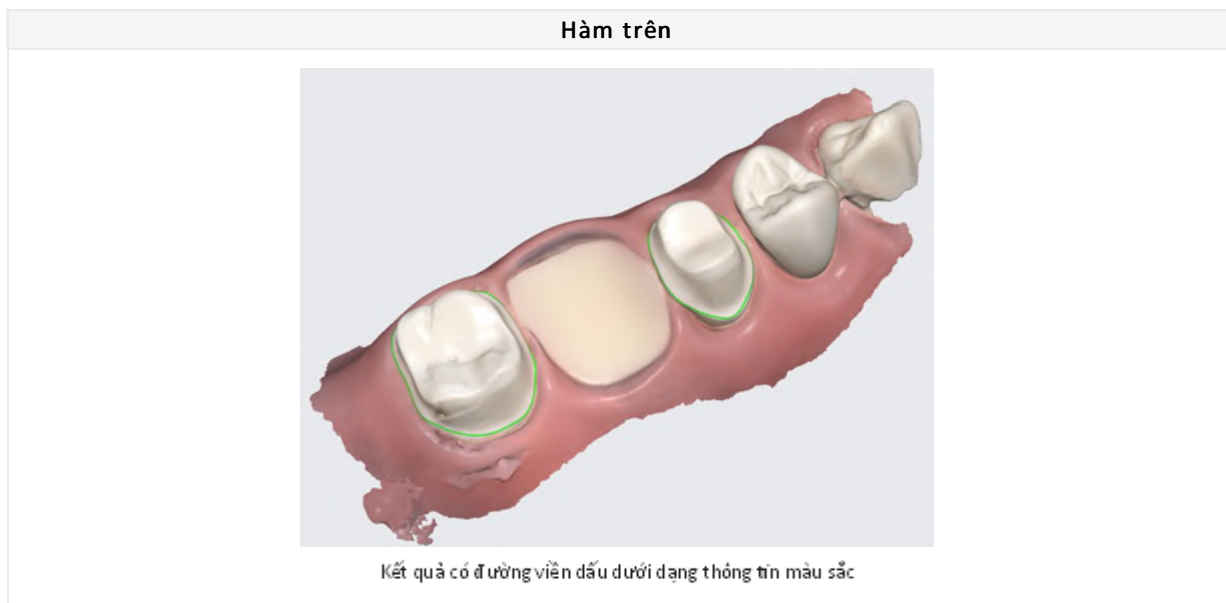

Lưu ý

Tính năng này có sẵn cho nhiều định dạng có thông tin màu sắc như meditMesh, OBJ và PLY. Đường viền dấu không chuyển đổi thành STL.

Lưu ý


Loại > 3Shape không hỗ trợ tính năng này.

Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp

Trong trường hợp Exocad, Medit Link xuất đường viền dấu dưới dạng "~margin.xyz" có thể được nhập trực tiếp vào exocad.

Bạn có thể sử dụng tệp này trong exocad mà không cần thao tác thêm.

Ví dụ:

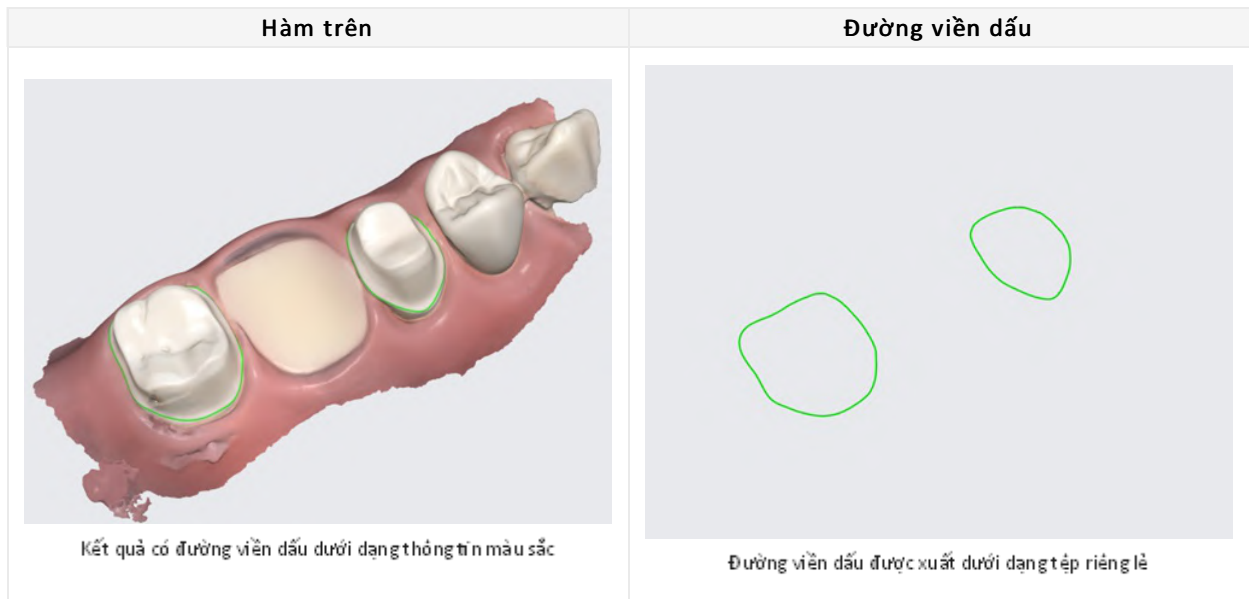

Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link

Medit Link có chức năng tải xuống.

Nếu bạn muốn nhận tệp kết quả mà không phải cài đặt ứng dụng Medit Link, bạn có thể tải xuống tệp từ dịch vụ web Medit Link.

Lưu ý


Dữ liệu phải được tải lên Medit Cloud để tệp có thể được tải xuống từ trang web.

Chức năng tải xuống có sẵn trong menu của dịch vụ web Medit Link sau.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Bạn có thể tìm thấy nút "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

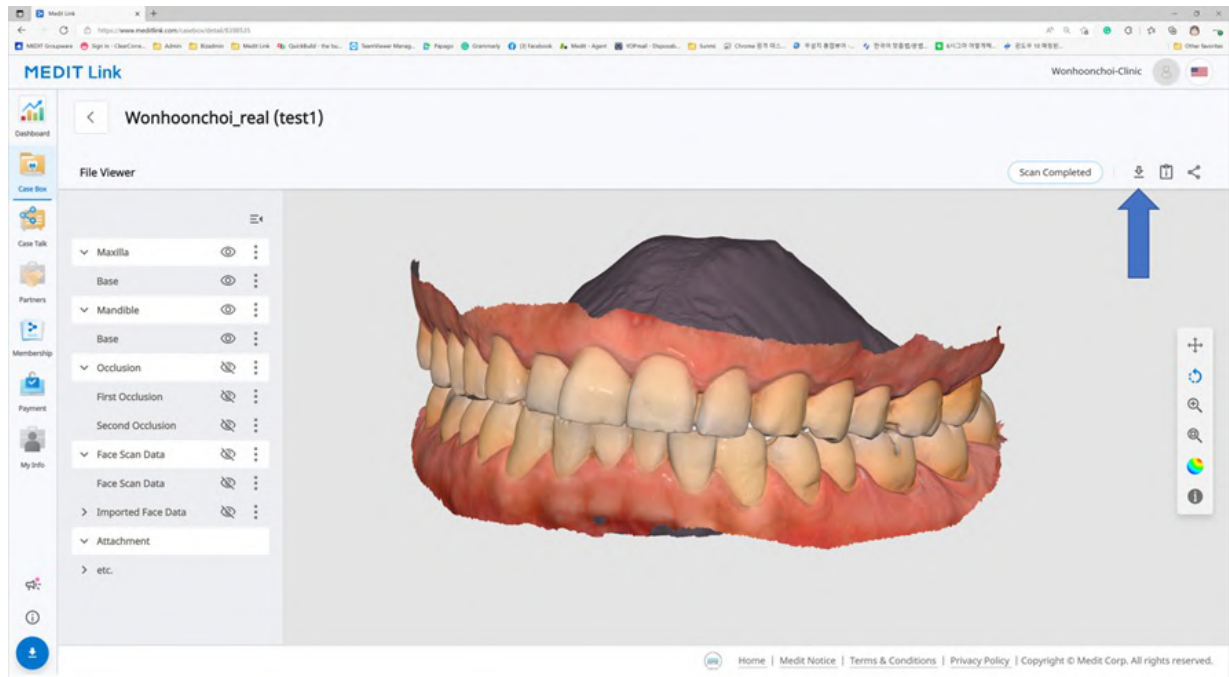

Web Viewer

Khi chia sẻ ca bằng Case Talk, bạn có thể đặt xem có cho phép tải xuống không.

Nếu bạn chọn "Cấp quyền tải xuống" và chia sẻ ca này, tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ đều có thể tải xuống tệp.

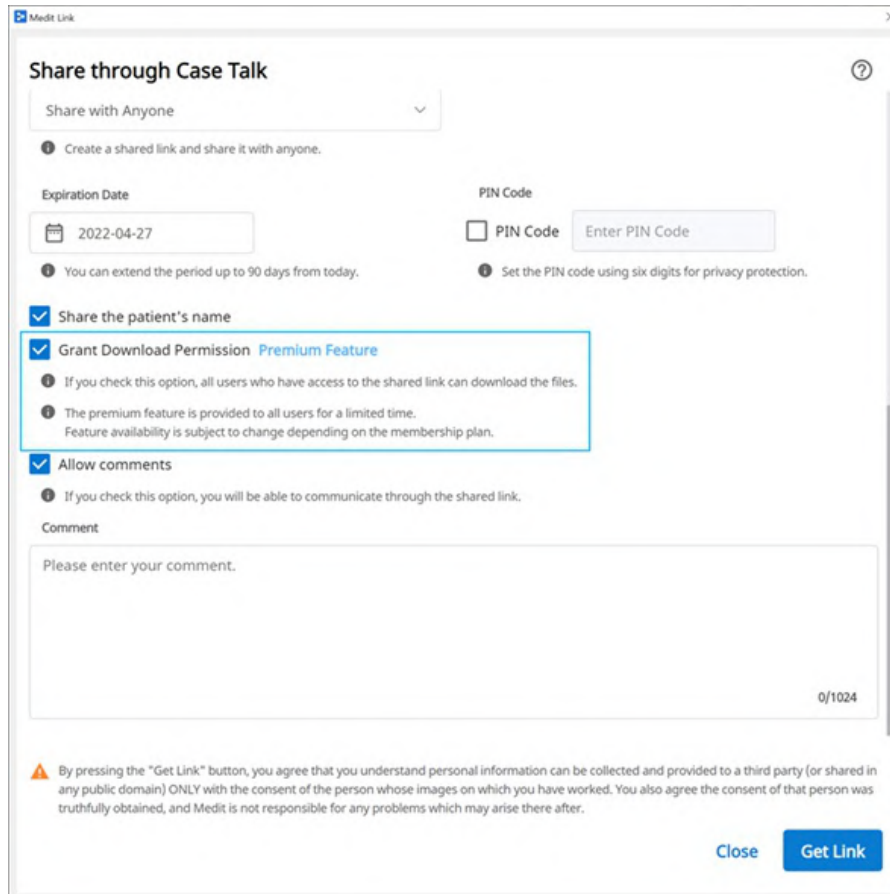

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link


Trong Web Viewer, bạn có thể tìm thấy biểu tượng "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

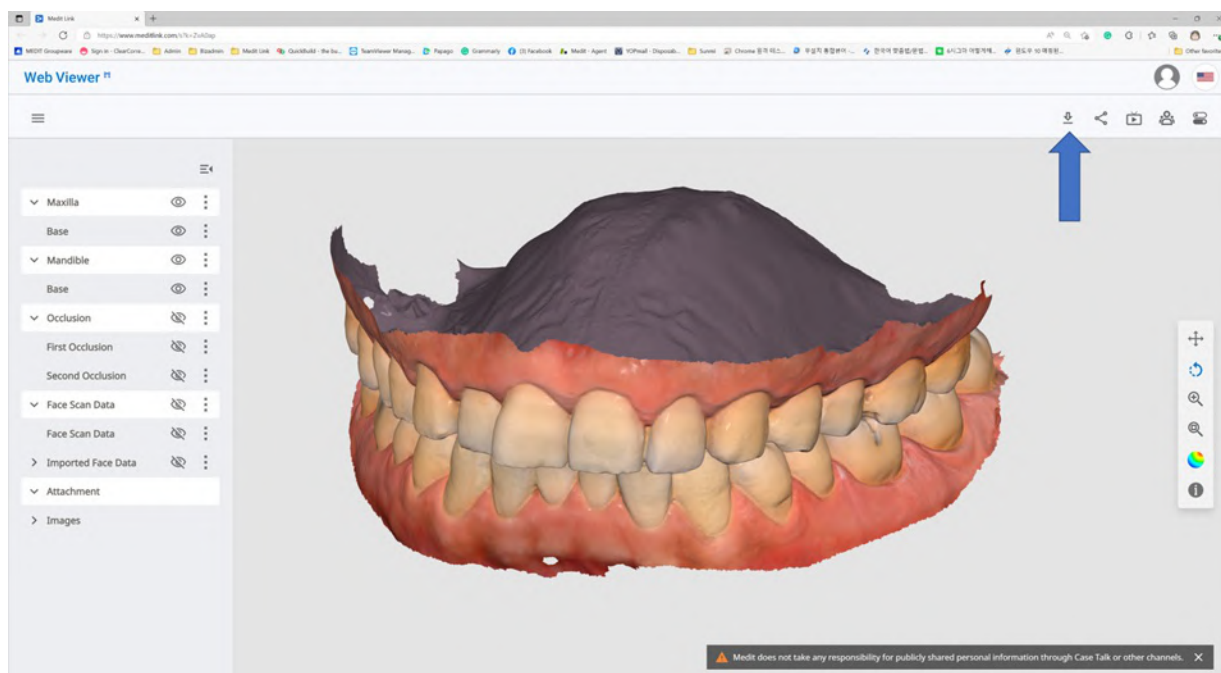

1. Nhấp vào "Tải xuống."



2. Chọn định dạng lưới từ hộp thoại tải xuống.

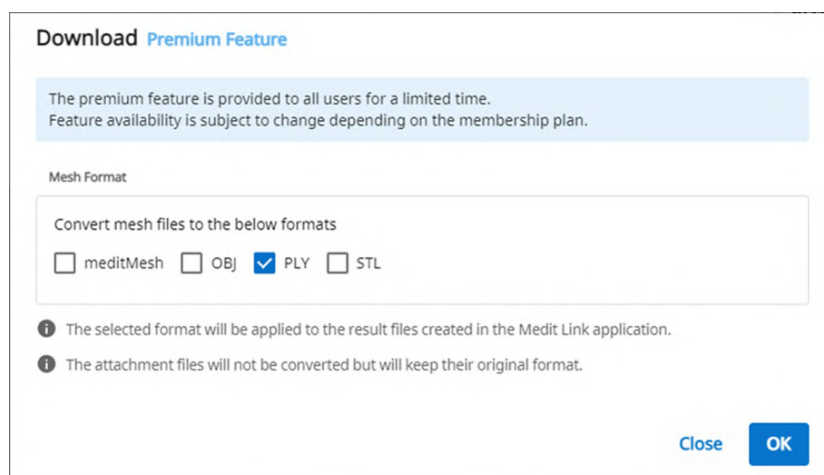

3. Sau đó nhấp vào "OK."

Đơn hàng/Quản lý đơn hàng

Bạn có thể dễ dàng đặt hàng một ca kèm dữ liệu thu được từ các chương trình kết nối và do người dùng đính kèm.

Đặt hàng ca

Bạn có thể đặt hàng với đối tác trong Case Box.

1. Nhấp vào nút "Đặt hàng".
2. Kiểm tra thông tin cần thiết cho đơn hàng của bạn.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Chọn đối tác.
4. Kiểm tra thông tin sản phẩm từ tab Bảng kê đơn hàng.
 - Bạn có thể quyết định có nên chia sẻ tên của bệnh nhân hay không.
5. Kiểm tra tệp sẽ đặt hàng từ tab Danh sách tệp.
6. Nhập ngày giao hàng mong muốn.
 - Giá trị mặc định được đặt là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
7. Bạn có thể thêm ghi chú và tag cho đối tác để nêu thông tin chi tiết cụ thể.
8. Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp cắn thì bạn có thể chọn "Đặt hàng tất cả quan hệ khớp cắn" để gửi đồng thời tất cả kết quả khớp cắn.
9. Tiến hành đặt hàng.

Xác nhận đơn hàng (In Box)

- Chấp nhận sau khi nhận được đơn hàng.

- Đơn hàng đã chấp nhận sẽ được gửi đến Work Box.

Hủy đơn hàng (Order Box)

- Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi đối tác chấp nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã hủy.

Từ chối đơn hàng (In Box)

- Bạn có thể từ chối đơn hàng đã nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã từ chối.

Kiểm tra ca đã đặt hàng

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết ca đã đặt hàng từ Order Box trong tài khoản phòng khám. Bạn cũng có thể kiểm tra ca đã nhận từ In Box trong tài khoản phòng lab.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Thông tin đơn hàng	Đơn hàng có thể có những thông tin sau: ID đơn hàng/tên bệnh nhân/tên tài khoản/ngày quét/ngày đặt hàng/ngày giao hàng/ngày hết hạn giao hàng/bản ghi nhớ. Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của sản phẩm đã đặt hàng và thông tin giao hàng.
Bảng kê đơn hàng	Bảng kê đơn hàng hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm đã đặt hàng.
Vận chuyển	Nhập/kiểm tra thông tin vận chuyển.

Nhập thông tin vận chuyển (In Box)

Nhập thông tin vận chuyển của ca đã hoàn tất và bắt đầu vận chuyển.

1. Nhấp vào tab Vận chuyển.
2. Nhập thông tin vận chuyển và nhấp vào "Đăng ký."

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Thông tin đã nhập sẽ được gửi cho đối tác.

Quản lý ngày giao hàng

Bạn có thể đặt ngày giao hàng dự kiến khi đặt hàng và thông tin này sẽ được chuyển tiếp cho đối tác.

Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)

- Bạn có thể nhập ngày yêu cầu giao hàng khi đặt hàng từ Case Box.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
 Seoul, KR
 [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
 오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

• You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

- Giá trị mặc định là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
- Nhập ngày/thời gian bạn muốn nhận sản phẩm và tiến hành đặt hàng.
- Bạn có thể dễ dàng đặt thời gian bằng thanh trượt.

Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)

- Bạn có thể nhập ngày giao hàng dự kiến cho ca đã đặt hàng từ In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main window displays the 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic' order details. The 'Expected Delivery Date' field is highlighted with a blue box, showing '2022-10-01' and '10:30'. The 'Order List' table on the right shows three items: Implant Crown, Cementation Ty..., Multi-Layered Zirconia, None Sh..., and Price 0. The total is KRW 0.

- Kiểm tra ngày yêu cầu giao hàng với đối tác và lên lịch lại bằng nút "Chỉnh sửa".



- Nhập ngày giao hàng dự kiến dựa trên ngày làm việc thực tế. Bạn cũng có thể để lại bình luận nếu cần.
- Nhấp vào "Áp dụng."

The screenshot shows the date selection interface. It features a calendar for March 2022 with the 17th selected. Below the calendar is a 'Delivery Time' slider set to 11:45 AM, and a 'Comment' text area. The 'Apply' button is highlighted.

- Ngày giao hàng dự kiến và bản ghi nhớ sẽ được chuyển tiếp cùng với đơn hàng.
 - Bạn có thể kiểm tra ngày và bản ghi nhớ trong Order Box.
 - Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng dự kiến và thay đổi này sẽ được chuyển tiếp đến đối tác.
- Bạn có thể kiểm tra lịch sử ca bằng nút "Lịch sử".



Hoàn tất ca

Hoàn thành (Work Box/In Box)


Sau khi hoàn thành tất cả tác vụ, nhấp vào "Xong" để hoàn tất ca.

Hoàn tất ca từ thông tin chi tiết ca

Bạn có thể tìm thấy biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải nút "Mở" hoặc "Quét lại".



Hoàn tất công việc bằng cách nhấp vào biểu tượng và chọn "Done."

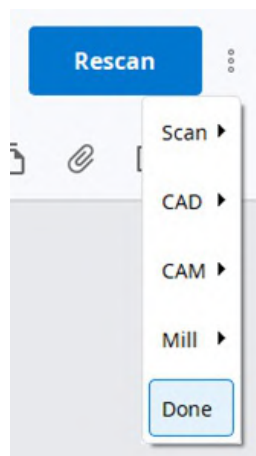

Hoàn tất nhiều ca từ danh sách ca

1. Truy cập vào Work Box.
2. Chọn tất cả ca cần hoàn tất.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Nhấp vào "Trạng thái" và chọn "Done."

Hoàn thành (Case Box/Order Box)

Sau khi phòng lab hoàn tất ca, phòng khám cần xác nhận ca đó để hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng.

Phòng khám có thể tìm thấy nút "Xác nhận giao hàng" trong Order Box nếu phòng lab đã hoàn tất công việc của mình.


Nhấp vào nút này sẽ hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng và trạng thái ca sẽ đổi thành "Case Completed."

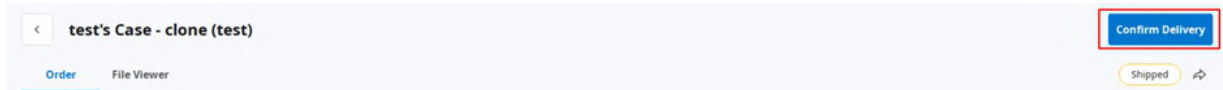

Hoàn tất ca chưa đặt hàng trong Case Box

Bạn có thể hoàn tất những ca chưa được đặt hàng đến phòng Lab từ Case Box.

1. Truy cập vào Case Box.
2. Chọn ca bạn muốn hoàn tất.

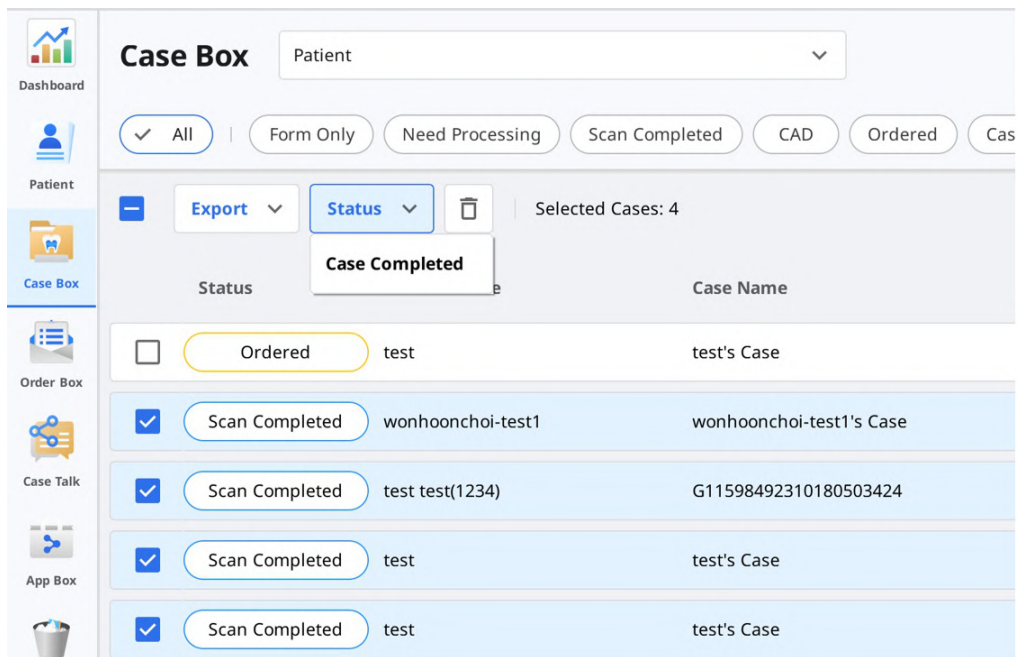

3. Nhấp vào "Trạng thái" và chọn "Case Completed."

Giao tiếp bằng tag

Bạn có thể dùng tag để bổ sung thêm thông tin cho ca của mình rồi gửi cho đối tác.

Thêm tag khi tạo một ca mới

Bạn có thể nhập tag khi tạo ca mới hoặc khi chỉnh sửa thông tin ca.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và chọn tag bạn đã từng sử dụng.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Thêm tag khi đặt hàng

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa tag trong hộp thoại Đặt hàng khi đặt hàng.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Kiểm tra tag để biết chi tiết ca

