

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Introdução	7
Medit Link	7
Visão geral do serviço	7
Serviço na nuvem	8
Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos	9

Medit Link > Instalação

Requisitos do sistema	10
Requisitos do sistema para Windows	10
Requisitos do sistema para macOS	10
Requisitos do sistema para serviço da Web	10
Navegadores recomendados	10
Requisitos mínimos para dispositivos móveis	10
Instalação no Windows	11
Instalação no macOS	14

Medit Link > Comece a usar

Cadastrar-se e fazer login	18
Página web do Medit Link	18
Cadastrar-se	18
Página de login e de boas-vindas	20

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	22
Visão geral do Dashboard	22
Medit Insights	22
Inscrever-se no Medit Insights	23
Cancelar inscrição no Medit Insights	24
Patient	25
Pesquisar paciente	25
Case Box/Work Box	26
Filtragem de caso	26
Filtrar por paciente	26
Filtrar por estado	27
Filtrar por duração	28
Filtrar por pesquisa	28
Detalhes do caso	28
Order Box/In Box	30
Detalhes da encomenda	30
Guias em Order Box/In Box	30
Case Talk	31
Criação de um Case Talk	31
Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento	32
Detalhes do Case Talk	34
Web Viewer	34
Anotação	35
Comentários	36

Compartilhamento de tela em tempo real	37
Árvore de dados	37
Controles da árvore de dados	37
Controles de modelo 3D	38
Partners	39
Procurar parceiros	39
Minha lista de parceiros	39
Convite para parceiro	40
Membership	41
Assinatura	41
Plano	41
Armazenamento na nuvem	42
Inscrever-se	43
Cancelar inscrição	45
Informações da fatura	46
Como adicionar um método de pagamento	46
Como alterar um método de pagamento	47
Resgatar	48
Registrar código de resgate	49
Ativar código de resgate	49
My Info	51
Minha conta	51
Minha clínica/Meu laboratório (apenas conta de Administrador)	51
Meu scanner	52
Menu Outros	53
Aviso e atualização	53
Páginas web relacionadas	53
Download do aplicativo Medit Link	53

Medit Link > Aplicativo Medit Link

Visão geral	55
A tabela abaixo resume quais menus estão disponíveis em cada tipo de conta de clínica e de laboratório.	55
Barra de título	56
Minhas informações	56
Notificações	56
Notícias e Atualização	57
Configurações	57
Estado da rede	58
Configurações	60
Geral	60
Gerenciamento do armazenamento	61
Definir período	62
Armazenamento local	62
Armazenamento na nuvem	62
Definir o programa conectado	63
Opções de exportação	63
Ferramenta de conversão de casos	65
Exportar caso	66
Importar caso	67
Opções de proxy	68
Sobre	69
Guia do usuário	69
Menu	70

Dashboard	70
Patient	70
Adicionar novo paciente	71
Excluir paciente	71
Mesclar pacientes	71
Case Box/Work Box	72
Guias em Case Box/Work Box	72
Funções em Case Box/Work Box	73
Order Box/In Box	74
Guias em Order Box/In Box	75
Case Talk	75
App Box	76
Tudo	76
Medit Apps	77
Baixados	77
Trash Box	77
Gerenciador da sincronização de casos	78
Upload	78
Download	78
Páginas web relacionadas	79
Visualizador de arquivos	80
Árvore de dados	80
Ferramentas de controle de modelo	80
Controle de modelo 3D	80
Controle de imagem 2D	81
Ferramentas de função	82
Captura de imagens e nota	82
Captura de ortodontia	82
Preencher buracos	83
Recorte	84
Otimizar alinhamento da oclusão	86
Movimento mandibular	87
Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos	88
Como gerenciar vários resultados	88
Opções de visualização	90
Filtros do estado	90
Tipo de visualização	91
Agrupamento	91
Ordenação	91
Filtragem e pesquisa	93
Filtrar por paciente	93
Filtrar por data	94
Recursos avançados de pesquisa	94

Medit Link > Fluxo de trabalho

Criar/Editar/Clonar/Excluir caso	96
Criar casos	96
Criar casos na Case Box (Clínica)	96
Criar casos na Work Box (Laboratório)	97
Editar casos	97
Editar casos na Case Box (Clínica)	97
Editar casos na Work Box (Laboratório)	98
Clonar casos	99

Clonar caso na Case Box (Clínica)	99
Clonar caso na Work Box (Laboratório)	99
Excluir caso	100
Excluir caso (Clínica e Laboratório)	100
Informações do formulário	101
Registrar informações do formulário na Case Box	101
Inserir na guia Formulário	101
Registrar informações do formulário na Work Box	101
Inserir na guia Formulário	101
Conectar dentes à ponte	101
Definição das opções de escaneamento	102
Medit Scan for Labs	102
Opções gerais	102
Opções por dente	102
Adicionar aos favoritos	102
Adicionar aos favoritos	103
Gerenciar templates favoritos	103
Trabalhar em escaneamento/CAD	104
Processo de escaneamento	104
Processo de CAD	104
Utilização de aplicativos complementares	104
Complemento Inicializador rápido	104
Gerenciamento do inicializador de aplicativos	104
Inicializador rápido	105
Todos os apps	105
Obter arquivos de resultados	106
Exportar arquivos de resultados de escaneamento	106
Exportar arquivos de resultados da lista de casos	107
Exportar arquivos de resultados do Visualizador de arquivos	109
Exportar arquivos de resultados da árvore de dados	111
Exportar a lista de casos como CSV	113
Exportar a linha de margem	113
Exportar a linha de margem como uma cor	113
Exportar a linha de margem como um arquivo	114
Download de arquivos do Medit Link Web	115
Case Box/Work Box	115
Web Viewer	115
Pedir/gerenciar pedidos	118
Pedidos de casos	118
Confirmar pedido (In Box)	118
Cancelar pedido (Order Box)	119
Rejeitar pedido (In Box)	119
Verificação de casos pedidos	119
Inserir informações de envio (In Box)	119
Gerenciamento da data de entrega	120
Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica)	120
Configuração da data de entrega estimada (conta de laboratório)	121
Concluir caso	122
Concluir (Work Box/In Box)	122
Concluir um caso nos detalhes dele	122
Concluir vários casos na lista de casos	122
Concluir (Case Box/Order Box)	122
Concluir um caso sem pedido na Case Box	123

Comunicar usando etiquetas	124
Adicionar etiquetas ao criar um caso	124
Adicionar etiquetas ao fazer pedido	125
Verificar etiquetas em detalhes do caso	125

Introdução

Medit Link

O Medit Link é uma ferramenta de colaboração projetada para facilitar a comunicação entre clínicas e laboratórios e fornecer um fluxo de trabalho otimizado para cada parte envolvida.

Ele oferece funcionalidades diferenciadas com base no tipo e nas permissões de cada conta. O programa fornece uma interface de usuário amigável para gerenciar o fluxo de trabalho, desde o escaneamento com scanners orais e de modelos, pedidos de casos e design e produção de próteses.

O Medit Link é composto por um serviço da web e um aplicativo de computador.

Visão geral do serviço

		Web	Aplicativo
		• Registrar e gerenciar a conta • Pesquisar e gerenciar parceiros • Compartilhar casos via Web Viewer com um link compartilhável • Acessar casos criados no aplicativo • Gerenciar pedidos	• Inserir informações do formulário • Escanear • Gerenciar pedidos • Vincular ao CAD • Gerenciar pacientes
Clínica	Administrador	Pesquise e gerencie parceiros e suas clínicas e compartilhe casos. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Insira informações do formulário, escaneie, faça pedidos e gerencie pacientes. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratório	Administrador	Pesquise e gerencie parceiros e seu laboratório e compartilhe casos. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Insira informações do formulário, escaneie e gerencie pedidos. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Serviço na nuvem

O Medit Link oferece suporte ao upload/download automático de bancos de dados e arquivos do AWS (Amazon Web Services).

Os dados armazenados na nuvem são sincronizados automaticamente com os computadores de vários usuários na organização para que eles possam acessar os mesmos dados de qualquer computador a qualquer momento. O backup e a recuperação baseados em nuvem mantêm todos os seus dados seguros. Isso mantém seus dados seguros mesmo em caso de perda de dados devido a falha repentina do computador.

O serviço na nuvem permite que dentistas e laboratórios parceiros compartilhem dados rapidamente sem o incômodo de enviar os escaneamento por e-mail ou transferi-los manualmente. Todos os dados, incluindo informações do paciente, são criptografados, armazenados e transmitidos com segurança. A Medit está em conformidade com as leis e os regulamentos médicos, como HIPAA e GDPR.

Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos

O Medit Link oferece seu próprio sistema de pedidos.

- O Medit Link permite aos usuários estabelecer parcerias entre dentistas e laboratórios dentários e compartilhar dados de forma rápida e fácil.
- Você pode verificar e gerenciar o status do pedido.

Requisitos do sistema

Observação

Consulte os requisitos do sistema do Medit Scan for Clinics e do Medit Scan for Labs se quiser usar o software de escaneamento com seu scanner.

Requisitos do sistema para Windows

	Laptop e computador
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz ou superior
RAM	16 GB ou superior
Placa de vídeo	NVIDIA GeForce GT 760 (2 GB) ou superior/ou placa de vídeo equivalente da AMD
SO	Windows 10 de 64 bits (não disponível em 32 bits) ou superior

Requisitos do sistema para macOS

	Mac
Processador	M1 com 8 núcleos, GPU de 7 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos
RAM	16 GB ou superior
SO	Monterey 12 ou superior

Requisitos do sistema para serviço da Web

Navegadores recomendados

	Navegadores
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Requisitos mínimos para dispositivos móveis

	Android	iOS
Dispositivo	Equivalente a Galaxy S7 ou superior	Equivalente a iPhone 7 ou superior
SO	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB ou superior	2 GB ou superior
AP	Superior ao Snapdragon 710	A10 Fusion

Instalação no Windows

O Medit Link é instalado como um pacote com programas de aquisição de escaneamento: o Medit Scan for Clinics e o Medit Scan for Labs.


1. Execute o programa Medit_LinkSetup.exe.
2. Selecione um idioma para instalação.
3. Selecione a pasta para a instalação do Medit Link. Leia e concorde com os termos e condições da licença e clique em "INSTALAR".

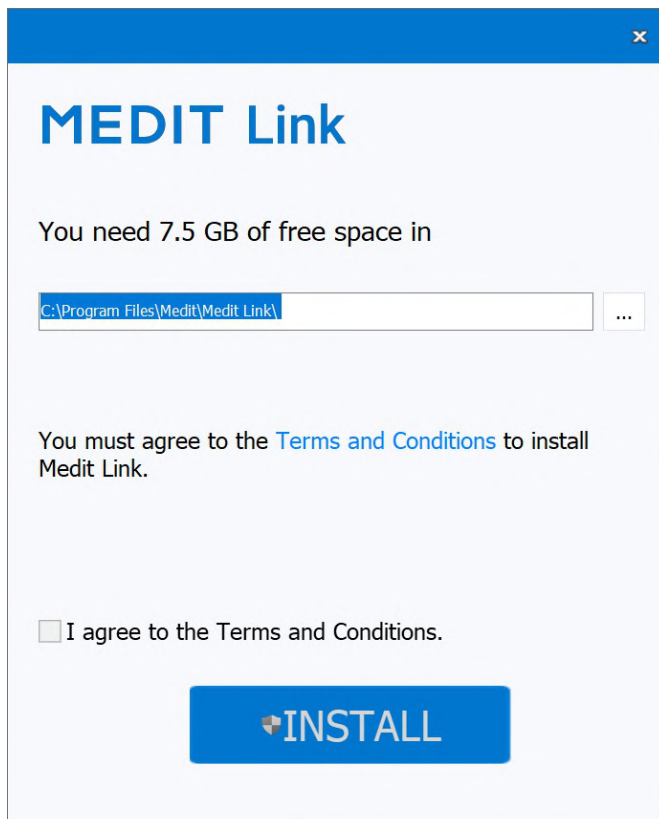

4. Certifique-se que o cabo do scanner esteja desconectado do computador antes de ir para a próxima etapa. A instalação não poderá prosseguir se o scanner estiver conectado ao seu PC.
5. O programa será instalado automaticamente, o que pode demorar alguns minutos. Não desligue ou tire da tomada o seu computador até a instalação estar concluída.



6. Reinicie o seu computador após a instalação ser concluída. Você pode continuar sem reiniciar o computador se não tiver o scanner.

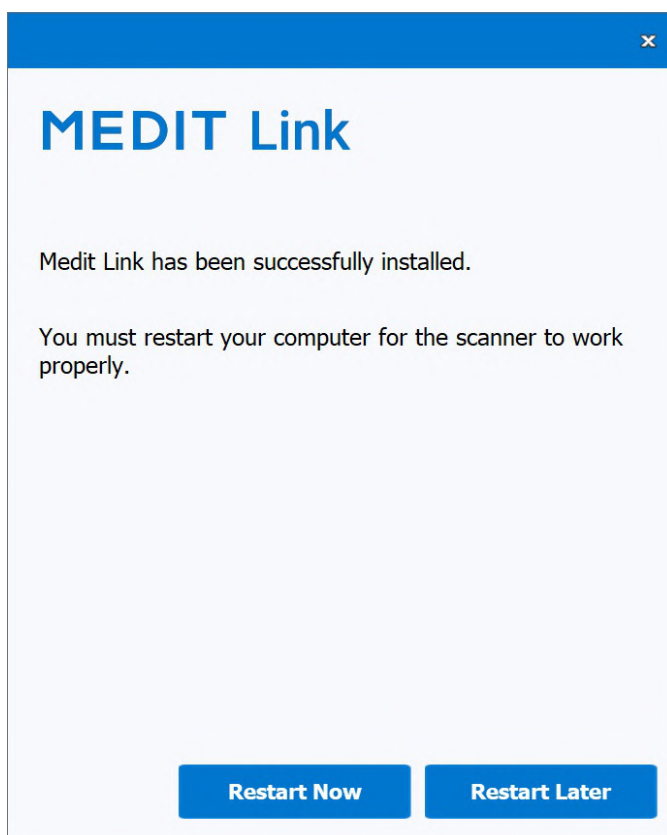


Observação

Se você não reiniciar seu computador após a conclusão da instalação, o scanner talvez não funcione corretamente.


Instalação no macOS

O Medit Link é instalado como um pacote com o Medit Scan for Clinics.


1. Execute o programa Medit_Link_x.x.x.pkg e clique em "Continuar".

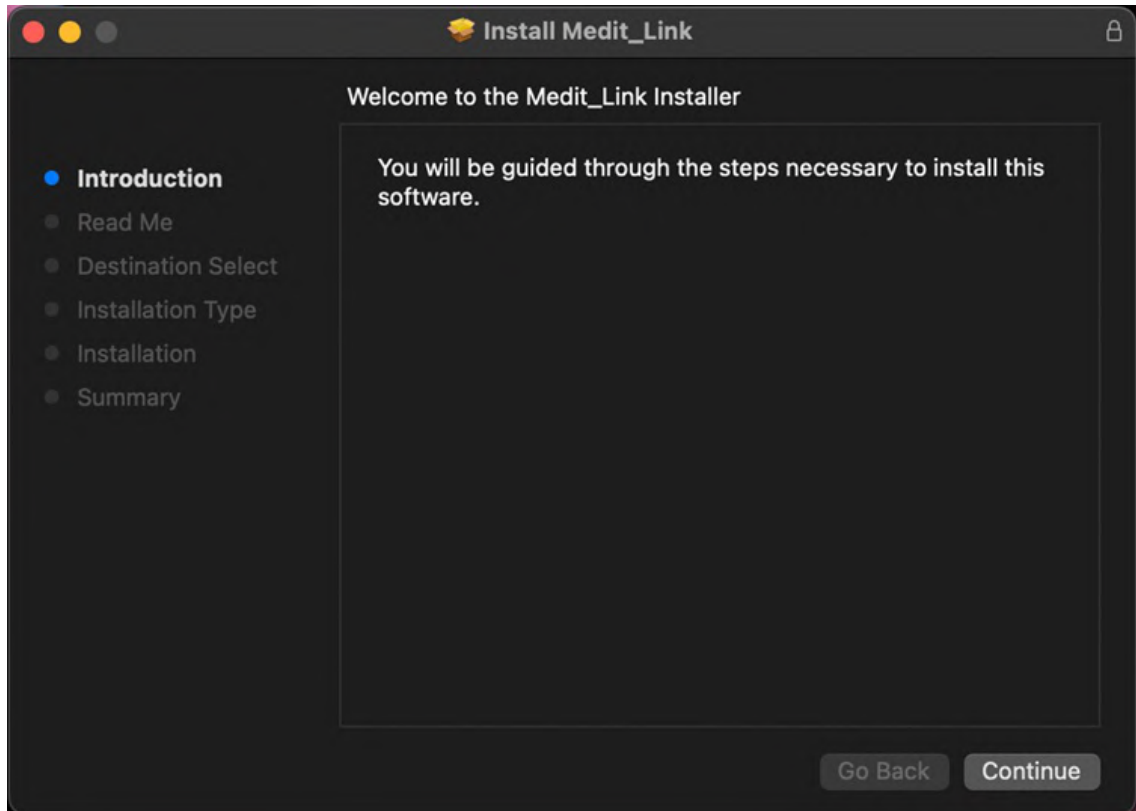


2. Leia o Contrato de licença de usuário final e clique em "Continuar".

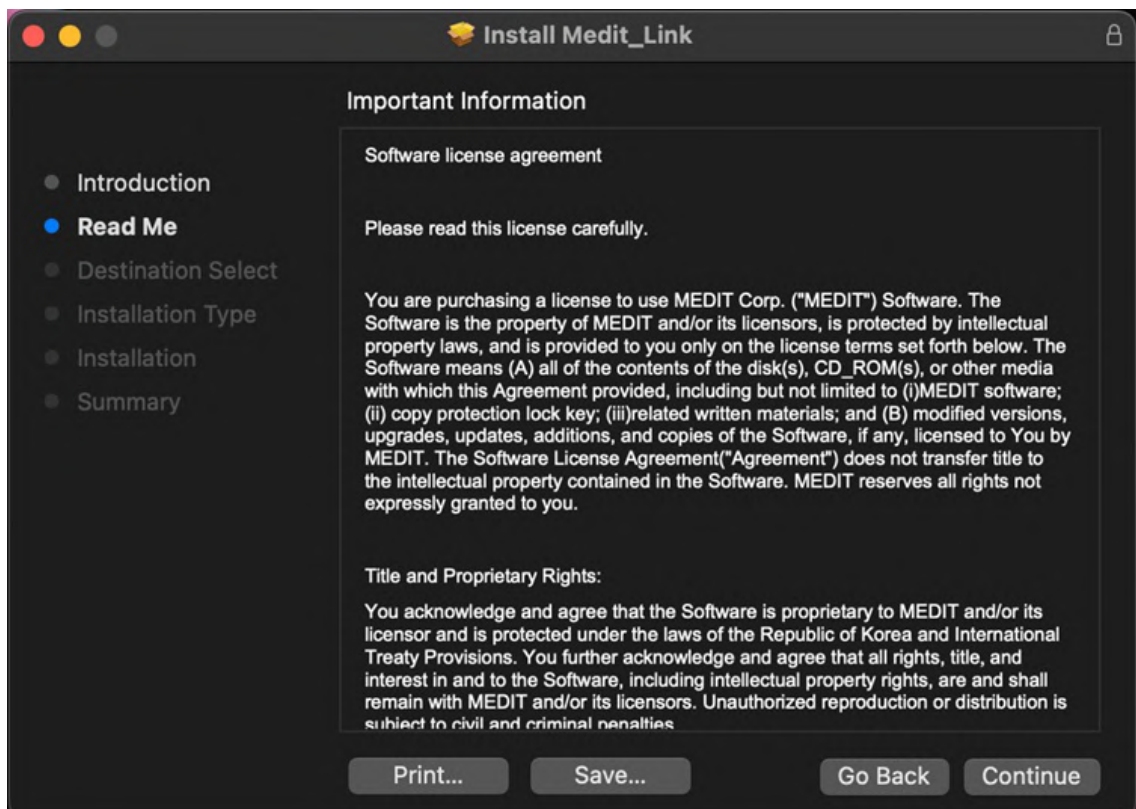


3. Selecione o disco para instalar e clique em "Continuar".

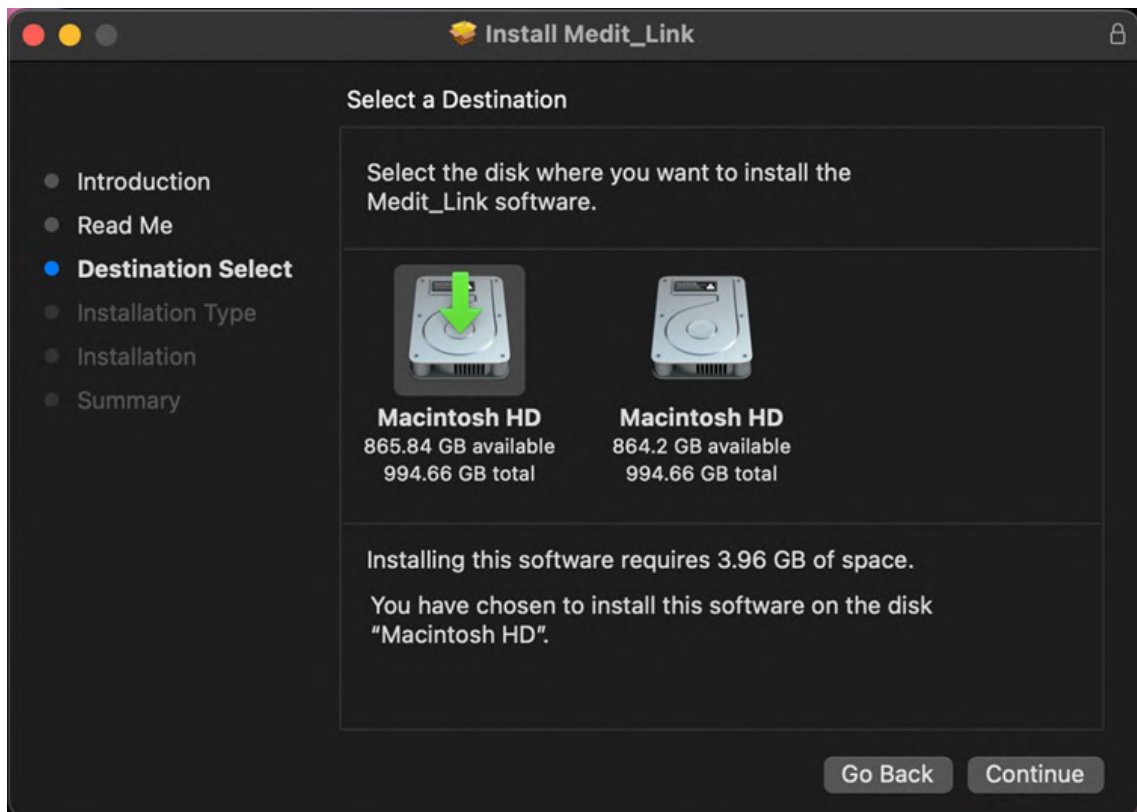


4. Clique no botão "Alterar local de instalação..." para alterar o destino da instalação.

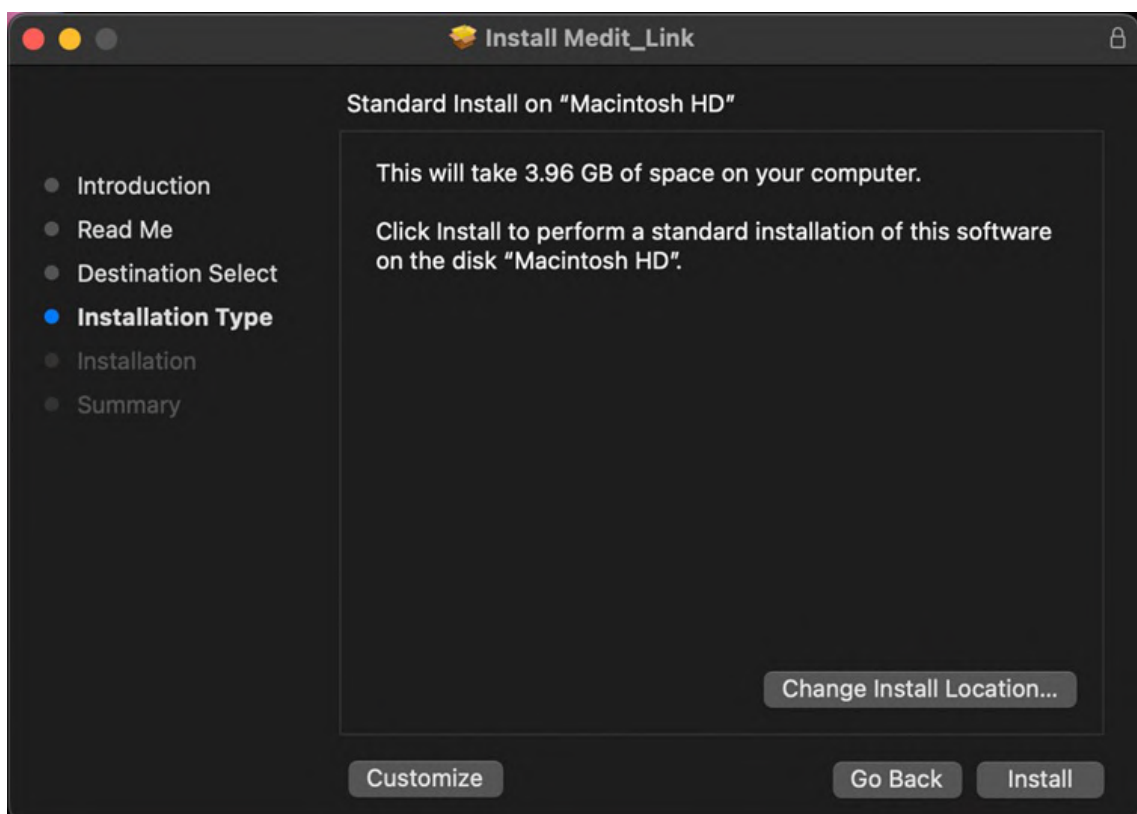


5. Clique em "Instalar" e digite sua senha do Mac para permitir a instalação, se solicitado.

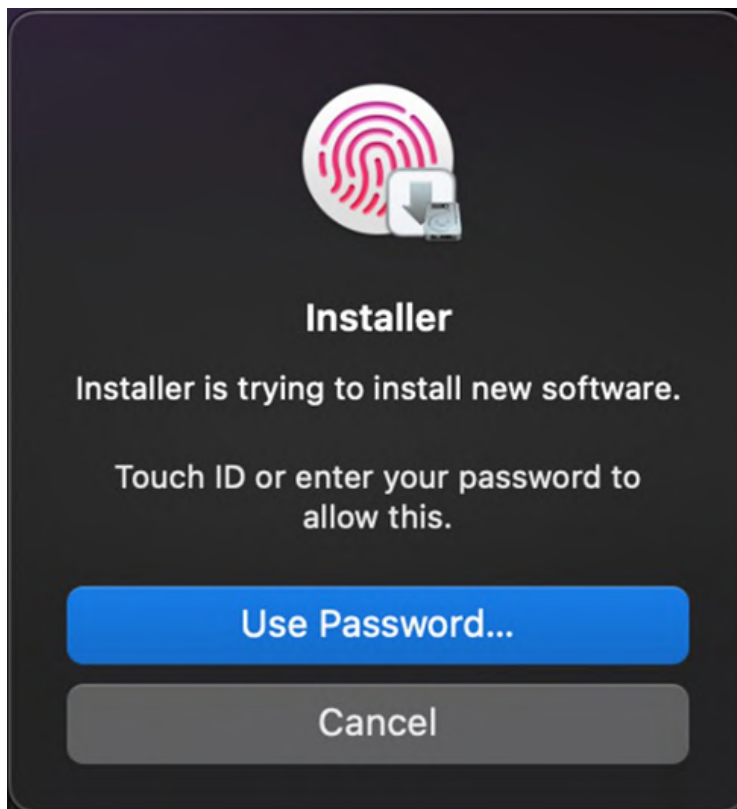

6. Aguarde a instalação ser concluída.

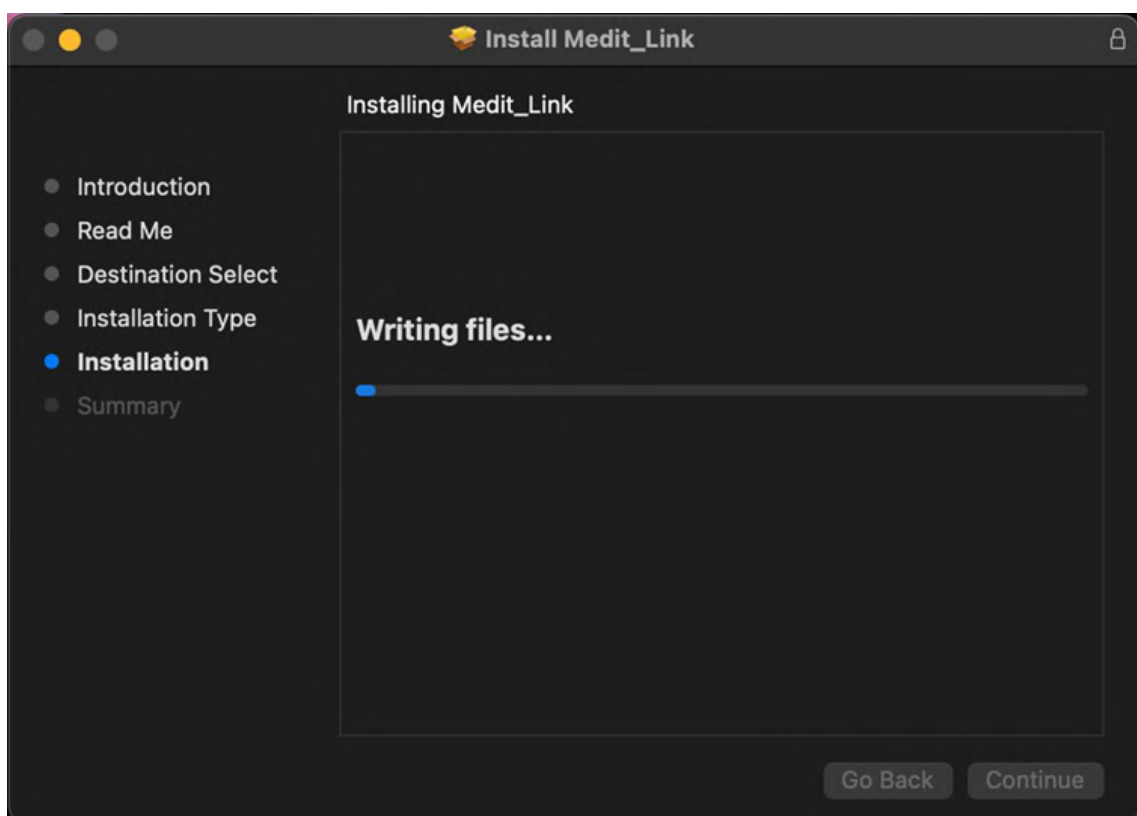


7. Clique em "Fechar" para sair da janela de instalação.

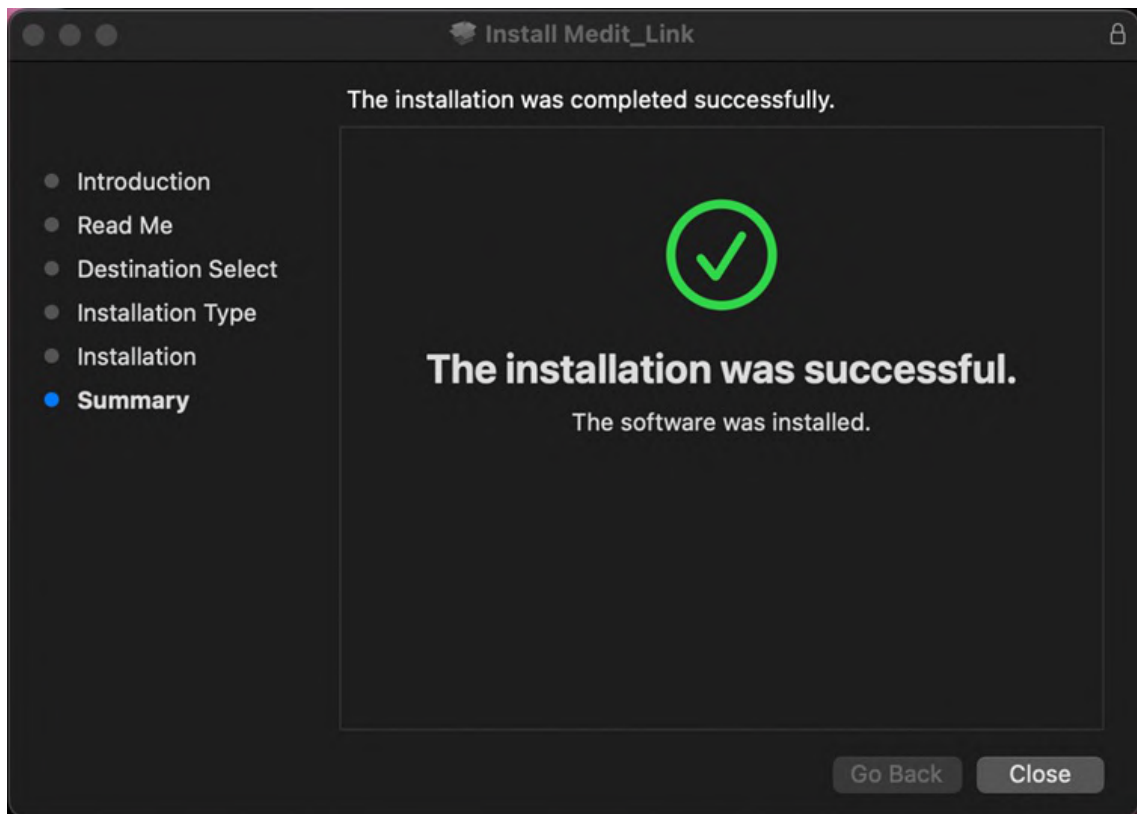

Cadastrar-se e fazer login

Página web do Medit Link

Cadastre-se para o serviço Medit Link em www.meditlink.com.

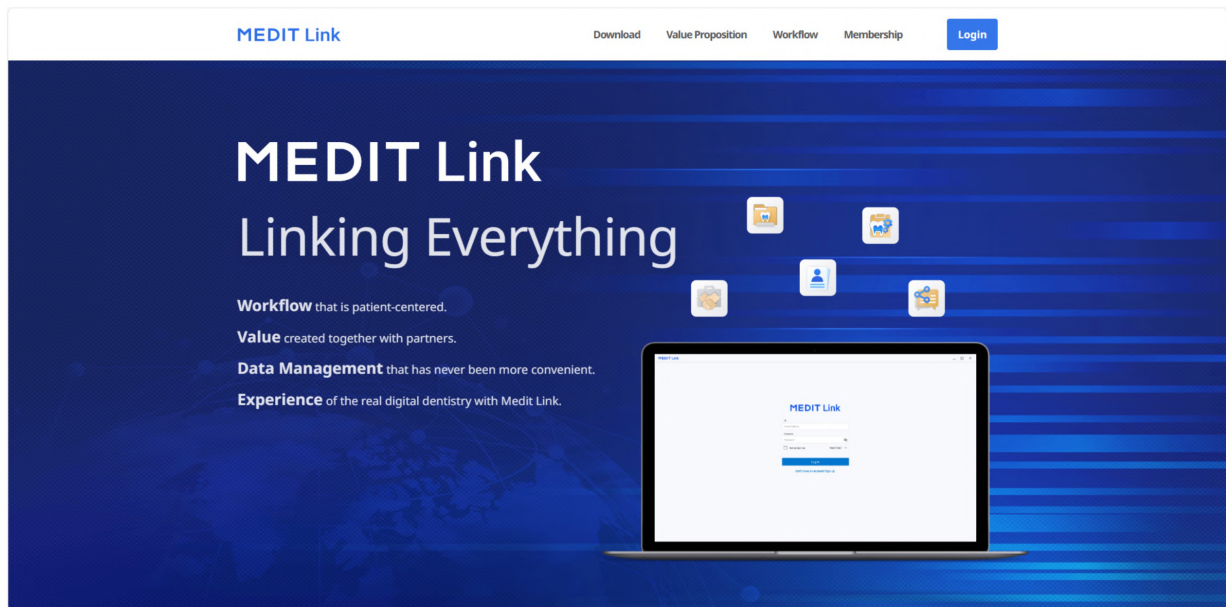

Observação

Registre-se no Medit Link China em www.meditlink.cn.

Cadastrar-se

Para usar o serviço Medit Link, você deve se cadastrar em uma conta. Você pode utilizar as funcionalidades fornecidas no Medit Link depois de criar uma conta como clínica ou laboratório.

Os usuários podem selecionar um dos quatro tipos de conta a seguir para se registrar como membro e usar o serviço com funcionalidades e privilégios totais ou limitados, dependendo do tipo de conta.

- Clínica - Administrador
- Clínica - Membro
- Laboratório - Administrador
- Laboratório - Membro

Geralmente, o administrador é um representante da sua organização e terá acesso completo a todas as funções e serviços do Medit Link. Em contraste, a conta de membro tem acesso limitado.

Para se cadastrar com uma assinatura, execute estas etapas:

1. Clique em "Ainda não tem uma conta? Cadastre-se" na página de login.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) ▼

- Depois de ler as descrições fornecidas, clique no botão "Registrar" do tipo de conta desejado.

Create Your Medit Link Account



Clinic

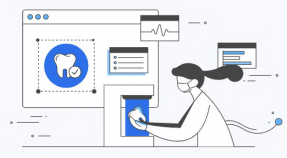

Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

- Aparece o seguinte formulário de inscrição.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region ▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
 ☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)
 ☐ Terms & Conditions (Mandatory)
 ☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

View

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Insira o nome da clínica ou do laboratório e, dependendo do tipo de conta desejado, faça o seguinte:
 - Se você estiver se registrando como administrador, clique em "Verificar disponibilidade" para ver se o nome inserido está disponível.
 - Se você estiver se registrando como membro, clique em "Pesquisar". O administrador já deve ter registrado sua organização antes de você poder se cadastrar.
5. Preencha o restante do formulário de registro e clique em "Registrar".

Observação

Se você concordar em receber informações de marketing durante a inscrição, receberá informações úteis sobre produtos e serviços da Medit.

6. Um e-mail de verificação será enviado para você.
7. Para concluir o processo de registro, verifique seu endereço de e-mail usando o link recebido.

Página de login e de boas-vindas

1. Digite seu endereço de e-mail e senha na página de login e clique em "Login".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Aparecerá a seguinte caixa de diálogo se você não tiver preenchido suas informações de negócios.

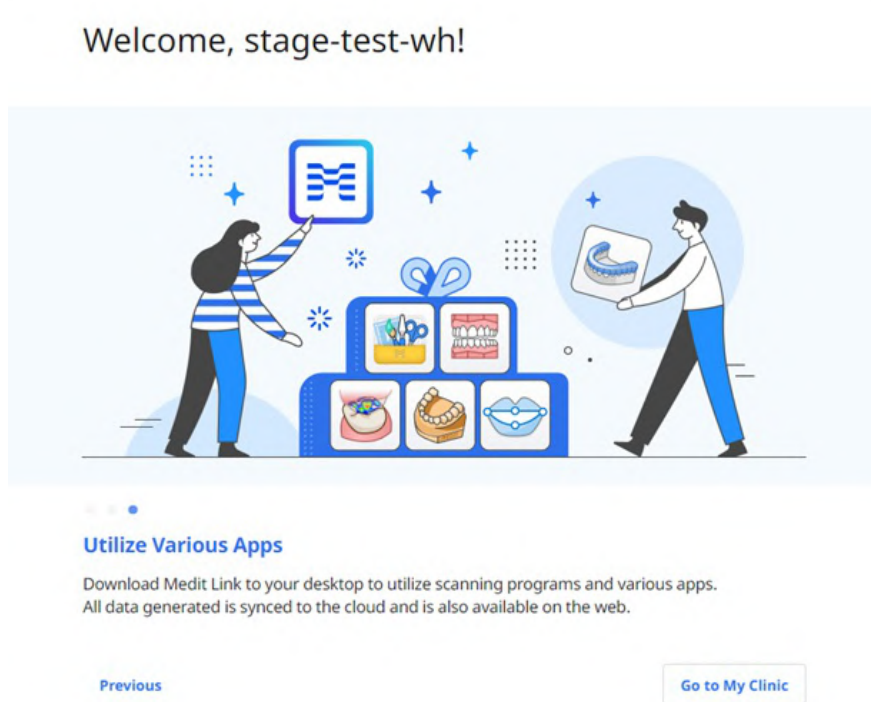

Observação


Para usar os serviços do Medit Link, é preciso inserir as informações sobre sua clínica ou laboratório usando a conta de administrador.

3. Clique no botão "Acessar Minha clínica" ou "Acessar Meu laboratório" e insira as informações da clínica ou laboratório, incluindo nome da empresa, imagens de capa/logotipo, serviços que você oferece, endereço comercial, número comercial, etc.
4. É possível editar as informações inseridas na página de boas-vindas a qualquer momento em My Info > Minha clínica ou Meu laboratório no Medit Link Web.

Dashboard

Visão geral do Dashboard

É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

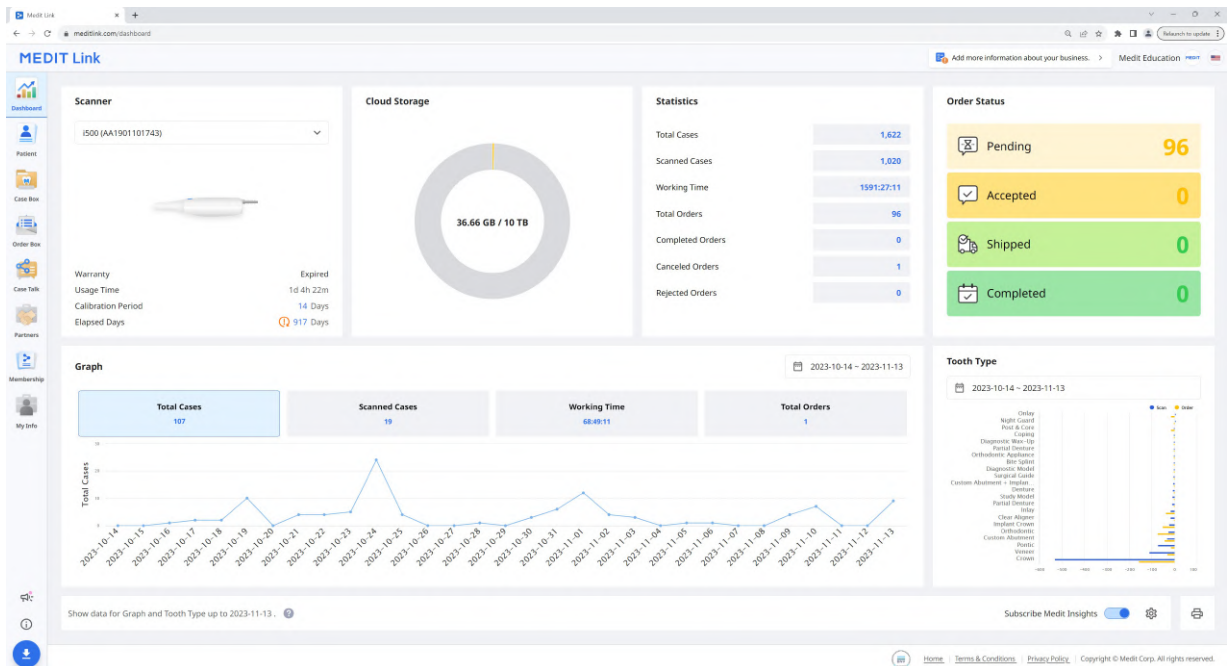

Gráficos e tabelas no dashboard mostram estatísticas de todo o trabalho feito no Medit Link.

Scanner	Fornecer informações sobre os scanners ativos, incluindo garantia, tempo de uso do scanner, intervalo de calibração e tempo decorrido de calibração.
Armazenamento na nuvem	Exibir a capacidade total da nuvem e a quantidade em uso.
Estatísticas	Fornecer estatísticas sobre casos com base no estado do trabalho.
Estado do pedido	Fornecer estatísticas sobre casos com base no estado do pedido.
Gráfico	Informações de trabalhos em gráfico por período.
Tipo de dente	Fornecer estatísticas sobre o número de escaneamentos e pedidos por informação de tratamento.


Medit Insights

O Medit Insights é um serviço de geração de relatórios que ajuda a analisar suas estatísticas de uso.

Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Medit Insights

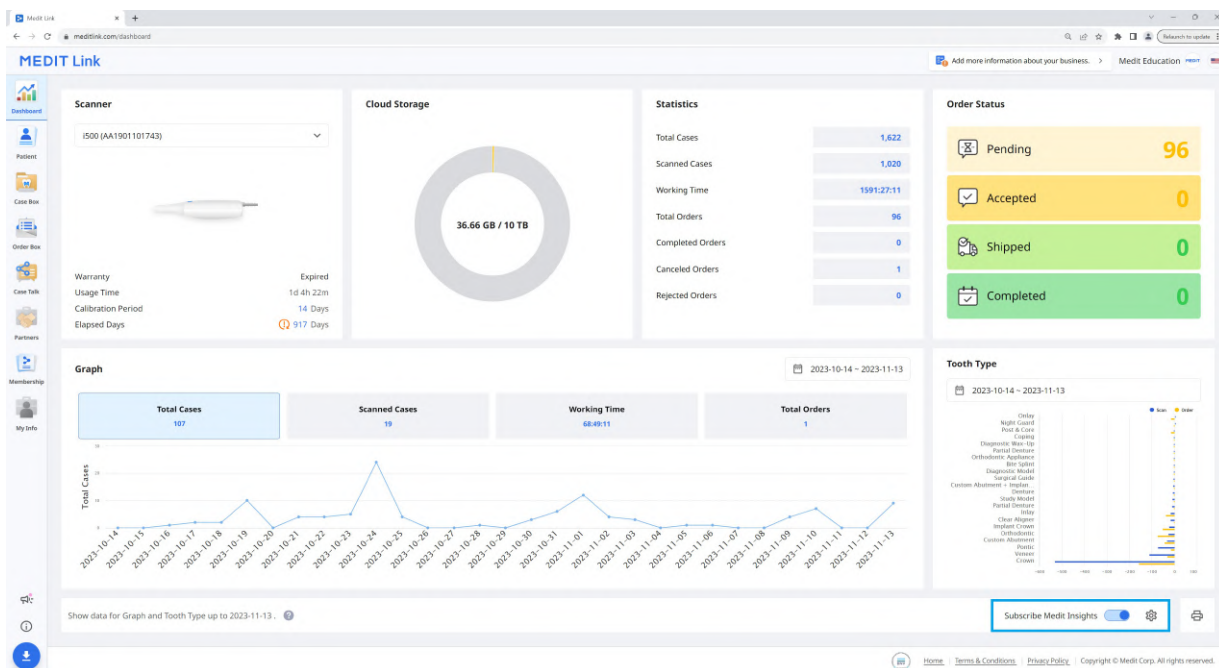

Inscrever-se no Medit Insights

Você pode receber um e-mail de relatório no segundo dia de cada mês. Não é necessário nenhum processo de inscrição adicional. Basta ativar "Inscrever-se no Medit Insights".

Se você não usar o endereço de e-mail usado para a conta do Medit Link, poderá definir outro endereço de e-mail para receber o Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

No segundo dia de cada mês, você receberá um e-mail com as estatísticas, como mostrado abaixo.

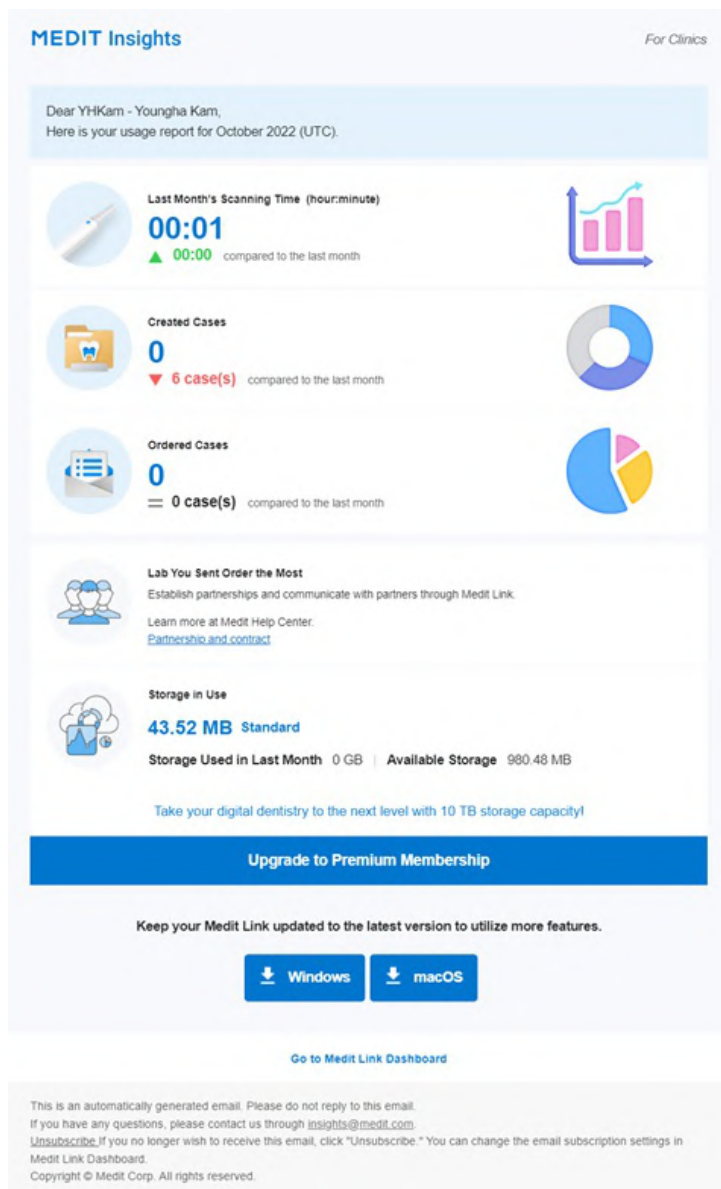

Banner	A Medit fornece dicas e informações úteis aqui. * Se você não quiser ver o banner, desmarque a caixa de seleção Contrato de marketing e promoção em Minhas informações > Minha conta.
Informações estatísticas	As informações de estatísticas são exibidas, como tempo de escaneamento, casos criados, laboratório com mais pedidos, etc.
Download do Medit Link	O botão fornece o link de download do Medit Link.
Dashboard	Todas as informações estatísticas se baseiam nas informações do seu Dashboard. É possível ver mais detalhes no Dashboard.


Cancelar inscrição no Medit Insights

Desative "Inscrever-se no Medit Insights" no Dashboard ou clique em "Cancelar inscrição" no e-mail recebido.

Patient

Você pode gerenciar casos com base no nome e ID do paciente.


Todos os pacientes registrados pelo aplicativo Medit Link são mostrados em uma lista, facilitando o gerenciamento deles e de seus casos.

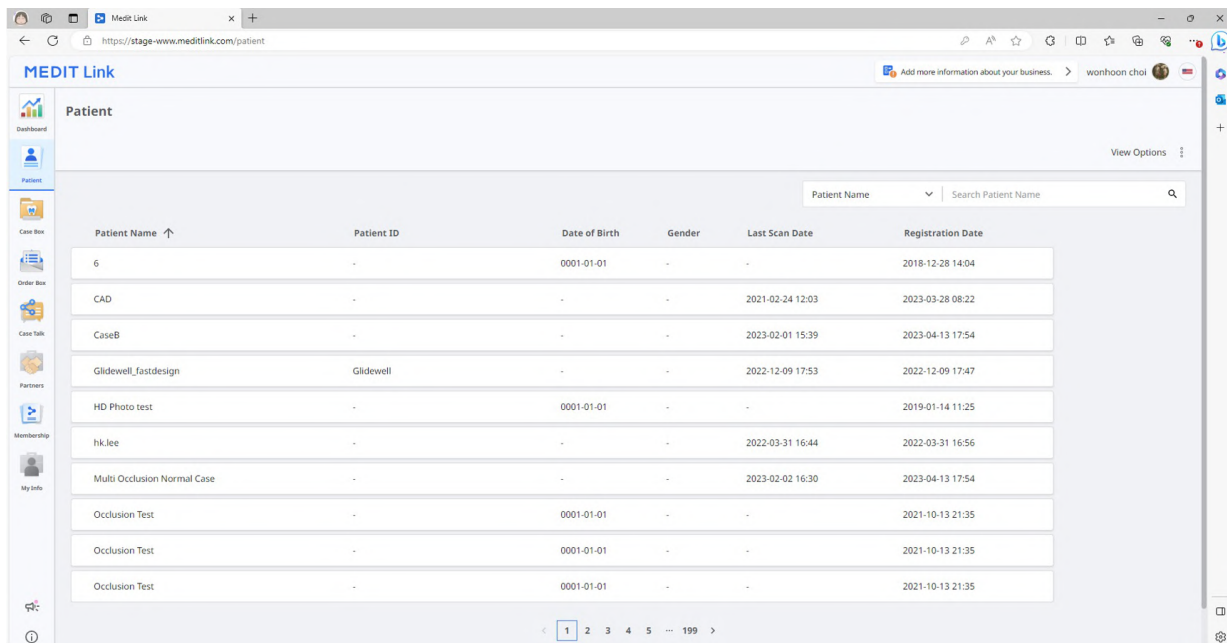

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Pesquisar paciente

1. Selecione seus critérios de pesquisa entre Nome do paciente ou ID do paciente no menu suspenso no canto superior direito da lista de pacientes.

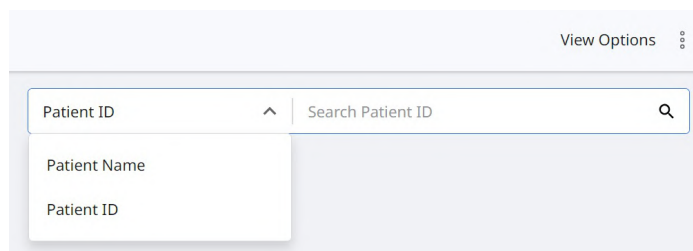

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Insira o nome ou ID do paciente para pesquisar de acordo com os critérios de pesquisa selecionados.
3. Somente pacientes com o nome ou ID do paciente inserido são exibidos na lista.

Case Box/Work Box


O Case Box (Clinic) ou Work Box (Lab) mostra todos os casos que o usuário criou no aplicativo Medit Link. Você pode ver os arquivos por meio de um navegador da Web sem instalar um programa separado.

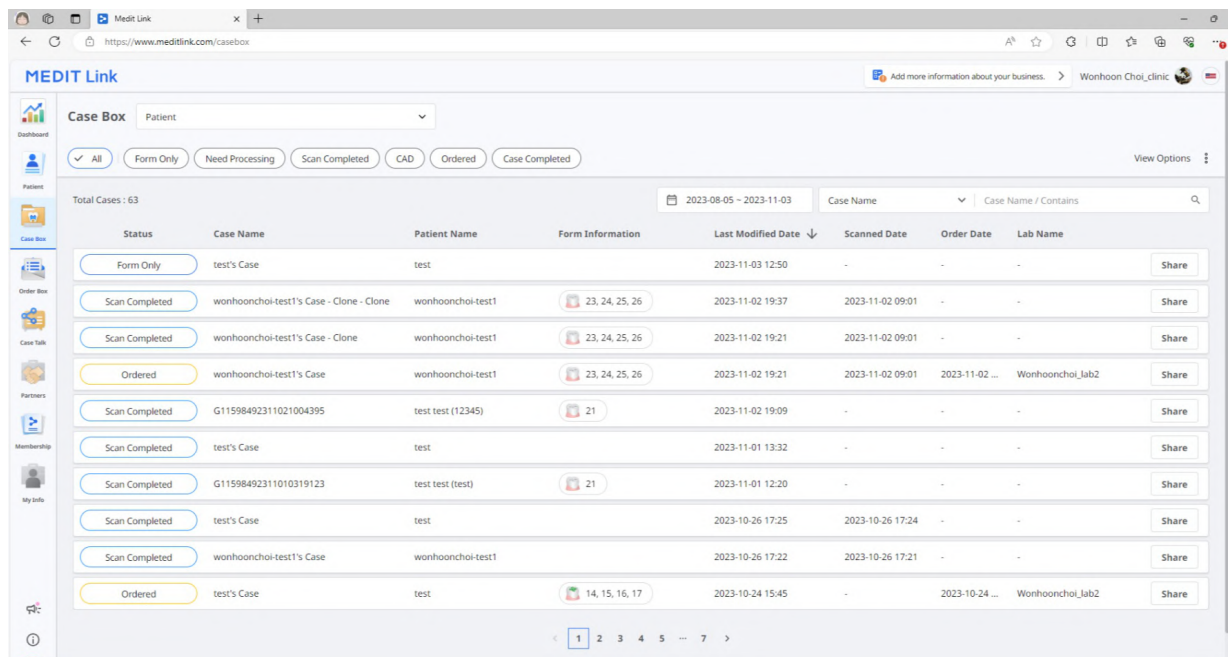


Filtragem de caso

Filtrar por paciente

É possível filtrar casos por pacientes. É útil quando você encontra casos de pacientes específicos.

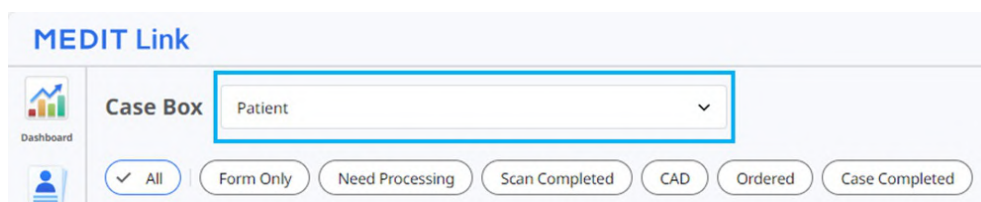

1. Insira um nome de paciente no campo de pesquisa.

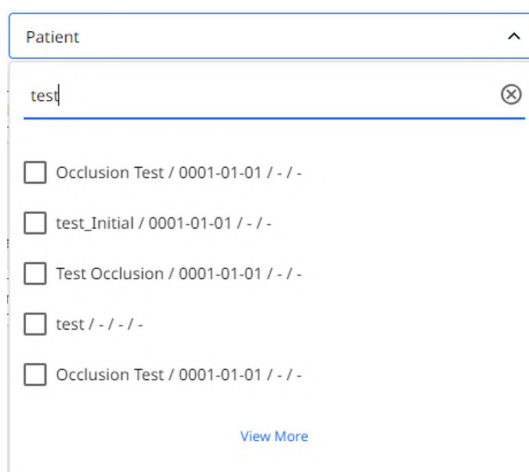

2. Selecione um paciente na lista de resultados da pesquisa.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Apenas os casos dos pacientes selecionados são mostrados na lista, facilitando a localização dos casos com os quais você deseja trabalhar.

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 63

2023-08-05 - 2023-11-03 Case Name Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7

Filtrar por estado

É possível filtrar casos com base no seu estado.

☐ All
 ☒ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☒ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

- O usuário pode clicar no estado que deseja visualizar. O navegador exibirá apenas casos no estado escolhido.
- O usuário pode selecionar vários estados de uma só vez.

Os seguintes tipos de estado são fornecidos com base no tipo de conta:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrar por duração

Você pode filtrar e exibir casos que foram modificados pela última vez no período definido.

1. Clique no filtro de duração.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selecione o intervalo.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados dentro desse período.
- Hoje: Exibe casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez com a data de ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Últimos 90 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 90 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe casos deste mês.
- Mês anterior: Exibe casos do mês anterior.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

Filtrar por pesquisa

Você pode aproveitar os recursos de pesquisa para pesquisar as informações necessárias com facilidade e rapidez.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

🔍

As seguintes opções de pesquisa são fornecidas com base no tipo de conta:

Case Box (Clinic)	Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório
Work Box (Lab)	Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido

Detalhes do caso

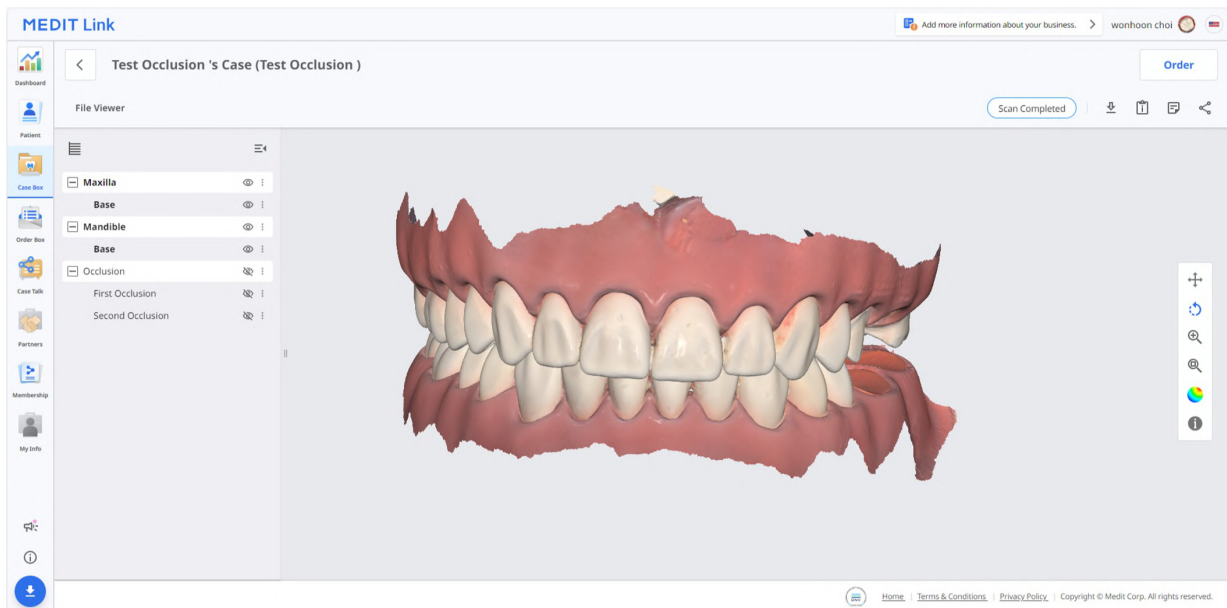

As seguintes funções de gerenciamento de caso são fornecidas na Case Box/Work Box.

	Estado do caso	Exibe o estado do caso.
	Acesse a Order Box/In Box	Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Download	Faz o download dos arquivos no caso para o PC local.
	Informações sobre o caso	Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.
	Notas e etiquetas	Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.
	Compartilhar	Cria um link para compartilhamento. Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais.

Order Box/In Box

O Order Box (Clinic) ou In Box (Lab) mostra os casos pedidos no aplicativo Medit Link.

Detalhes da encomenda

The screenshot displays the 'Order Box' interface in the Medit Link application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' title and a 'Cancel Order' button.
- Order Details:** A form containing fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date (2023-04-27), Order Date (2023-04-20 PM 02:08), Requested Delivery Date (2023-04-27), and Expected Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15). There are also fields for Memo and Tags.
- Order List:** A table listing the items ordered.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

- 1 Exibe os nomes do caso e do paciente.
- 2 Fornece funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).
- 3 Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.
- 4 Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.
- 5 Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.
- 6 Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.


Guias em Order Box/In Box

Pedido	Visualizador de arquivos
Verifique as informações detalhadas do pedido, como ID do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.	Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.

Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas que você determinar, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.

O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no "Case Talk" do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

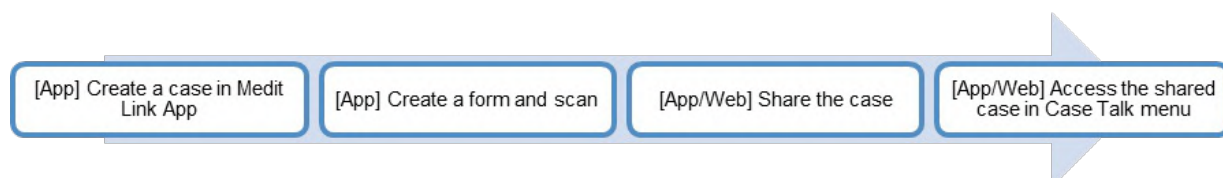

Casos compartilhados podem ser visualizados por meio de um navegador da web sem instalar um programa separado, permitindo uma comunicação fácil sobre os dados 3D em vários dispositivos.


Criação de um Case Talk

Você pode criar um link compartilhado para um caso criado no Case Box/Work Box.

1. Encontre um caso que deseja compartilhar e clique no botão "Compartilhar" à direita.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a patient dropdown and filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below this, a table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table shows several cases, including 'test's Case' and 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone'. The bottom of the table has a pagination bar showing '1' of 7 pages.

2. Selecione os arquivos que deseja compartilhar.

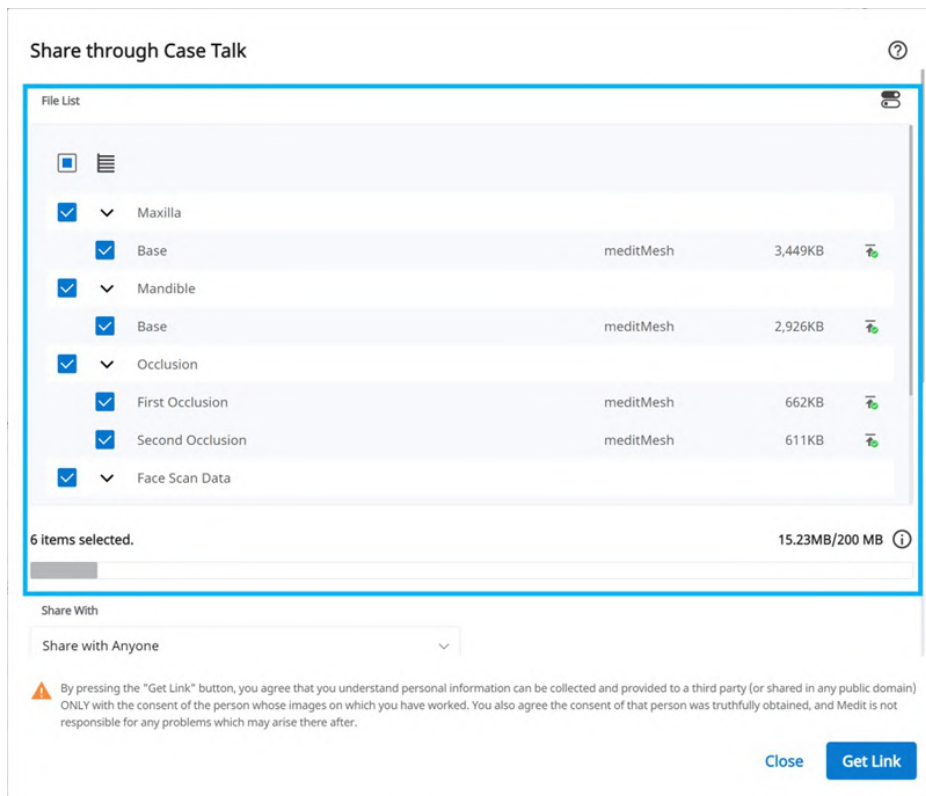

3. Defina o tipo de permissão de compartilhamento e as opções de compartilhamento.
4. Clique em "Obter link" para criar um link compartilhado.

Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close
Get Link

Compartilhar com	- Compartilhar com qualquer pessoa Cria um link compartilhado. É possível compartilhar os arquivos com qualquer pessoa. - Compartilhar com pessoas em específico Cria e envia um link compartilhado para pessoas específicas.
Compartilhar via	Se você selecionar "Compartilhar com pessoas em específico", poderá compartilhar o link com pessoas específicas de várias maneiras. - Endereço de e-mail - SMS - Parceiros
Data de validade	Define a data de validade do link. Depois que passar a data de validade do link, as pessoas com quem você o compartilhou não poderão mais acessar os arquivos. Você pode prorrogar o período de validade por até 90 dias a partir da data atual.
Código PIN	Define um código de acesso de seis dígitos para garantir a segurança dos dados.
Compartilhar o nome do paciente	Se você marcar essa opção, todas as pessoas com o link verão o nome do paciente.
Conceder permissão de download	Caso você marque essa opção, todos os usuários com o link compartilhado poderão fazer download dos arquivos.
Permitir comentários	- Se você marcar essa opção, conseguirá se comunicar por meio do link compartilhado. - Se você desmarcar a opção, o destinatário só poderá visualizar seus comentários, mas não conseguirá adicionar os próprios comentários.
Comentário	Você pode deixar uma mensagem na seção de comentário.

Detalhes do Case Talk

Você pode ver os arquivos no caso compartilhado. As funções a seguir estão disponíveis na página de detalhes do Case Talk.

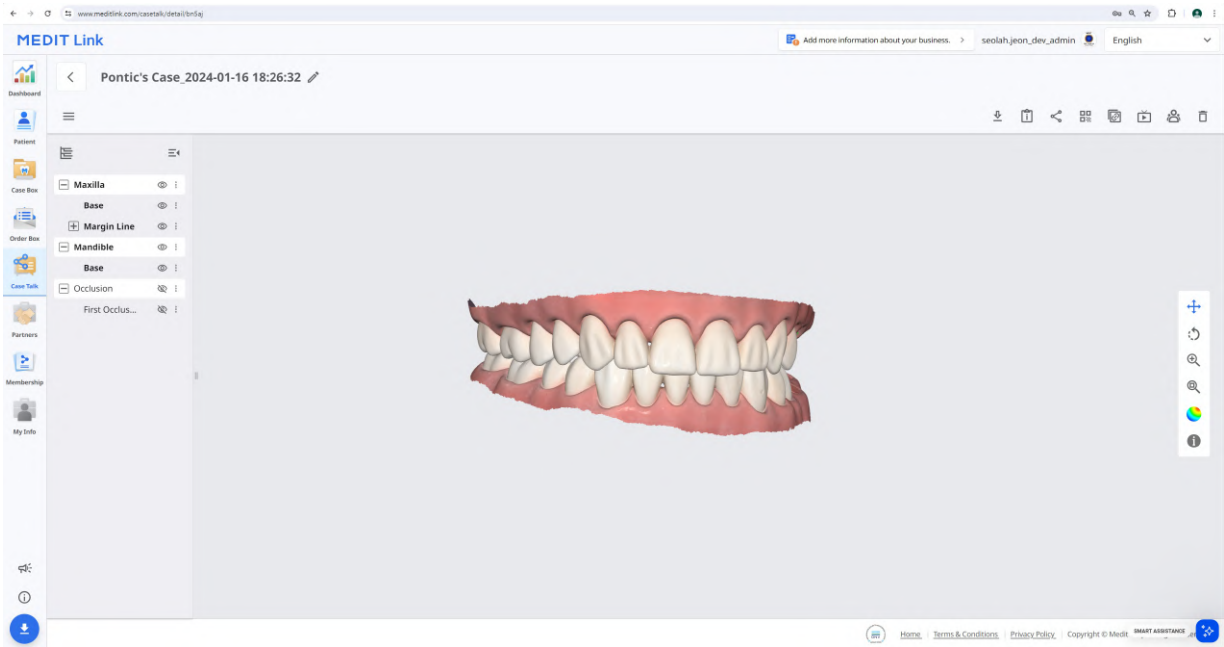

	Download	Faz o download de todos os arquivos do caso para o PC local.
	Informações sobre o caso	Exibe informações detalhadas sobre o caso.
	Compartilhar	Modifica a configuração do compartilhamento.
	Código QR	Compartilhe o caso com um código QR.
	Copiar link	Copia o link compartilhado para a área de transferência. O link copiado mostra os arquivos compartilhados em seu navegador da web.
	Live	Compartilha a sua tela com os usuários conectados. O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados.
	Participantes	Mostra todos os usuários que estão acessando o link compartilhado.
	Excluir	Exclui o link compartilhado. O link compartilhado excluído deixa de estar acessível.

Observação


Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Live
- Participantes

Web Viewer

Você pode visualizar dados compartilhados pelo Case Talk em um navegador da web.

É possível se comunicar com as pessoas que têm acesso ao link usando anotações e comentários.

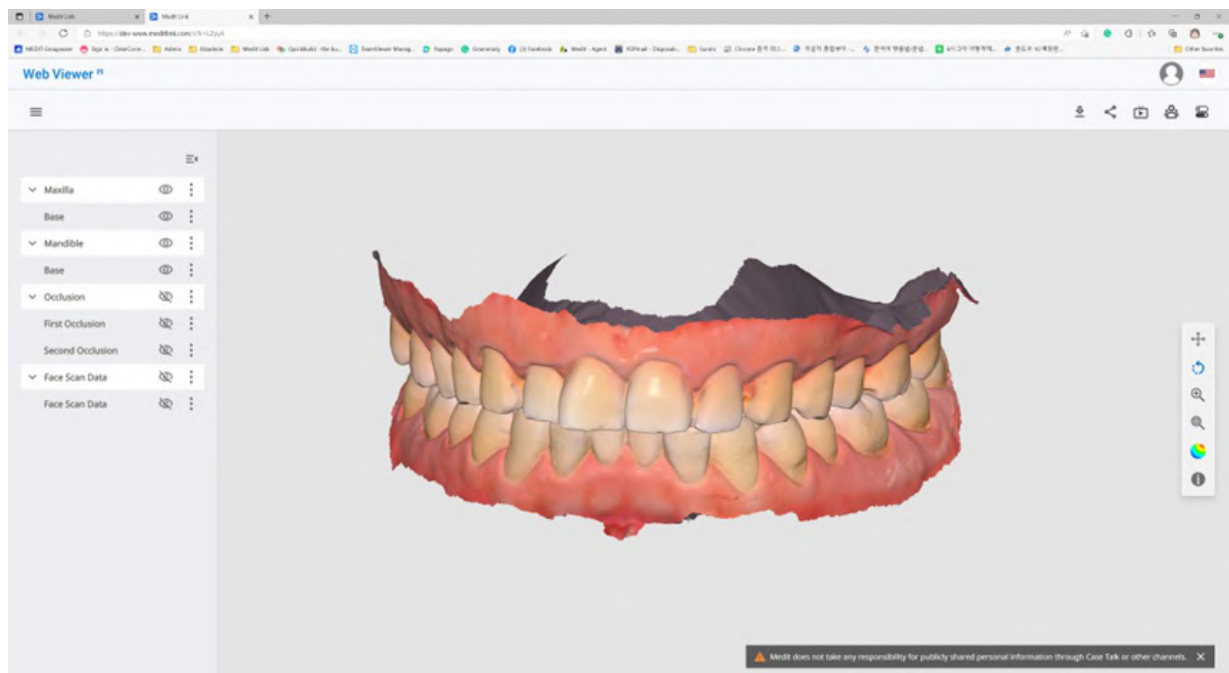

	Download	Faz o download de todos os arquivos neste caso para o PC.
	Informações sobre o caso	Exibe informações detalhadas sobre o caso.
	Compartilhar	Modifica as configurações do compartilhamento.
	Código QR	Copia o link compartilhado para a área de transferência. O link copiado mostra os arquivos compartilhados em seu navegador da web.
	Live	Compartilha a sua tela com os usuários conectados. O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados.
	Participantes	Mostra todos os usuários que estão conectados ao link compartilhado.
	Rotulagem dentária	Altera o sistema de rotulagem dentária.


Observação

Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Live
- Participantes

Anotação

Você pode adicionar anotações a um local especificado no modelo 3D. Qualquer pessoa com o link pode visualizar as anotações que você adicionar.

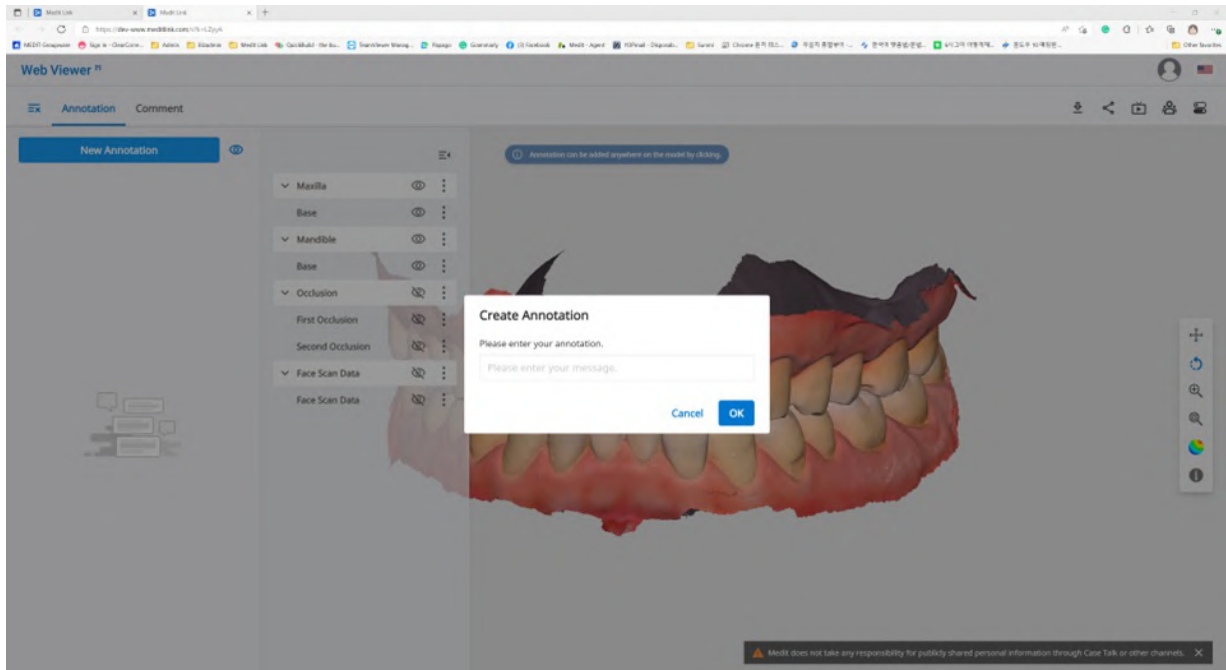

Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Anotações

1. Encontre o ícone do menu no canto superior esquerdo e selecione a guia "Anotação". Use o botão "Nova anotação" para adicionar uma anotação em qualquer lugar nos dados, com um clique.
2. Digite a mensagem e clique em "OK" para salvá-la.

3. Você pode usar as anotações como um canal de comunicação simples. Clique na anotação criada para inserir uma resposta e clique em "Enviar".

Comentários

Você pode se comunicar com os usuários que têm acesso ao link por meio da guia "Comentário" no menu do Web Viewer.

Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Comentário

Compartilhamento de tela em tempo real

Você pode compartilhar sua tela em tempo real.

Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Live

1. Clique em "Live" para compartilhar sua tela do Web Viewer com os usuários conectados.





2. Clique em "OK" para começar a compartilhar a sua tela.
3. Outras pessoas que acessaram o link devem aceitar o compartilhamento de tela.
4. A tela do usuário que iniciou o compartilhamento de tela é exibida em sincronia com a tela da pessoa que recebeu a solicitação.

Árvore de dados



Todos os dados são agrupados e exibidos de acordo com os atributos na árvore de dados. É possível exibir ou ocultar dados, ajustar a opacidade e assim por diante.

Controles da árvore de dados

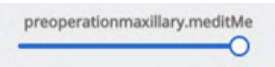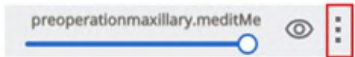Exibir / Ocultar	Clique no ícone de "olho" para exibir ou ocultar os dados da exibição. Controle a visibilidade dos dados como grupo ou como arquivo individual.
Opacidade	Passa o mouse sobre um elemento visível para ver a barra deslizante de opacidade. Ajuste a barra deslizante para alterar a transparência de seus dados. 
Menu estendido	O menu estendido é fornecido à direita de cada elemento da Árvore de dados. Ele inclui as seguintes opções:  • Exibir somente este: Oculta todos os outros dados, exceto os dados atuais. • Ocultar: Oculta os dados atuais.

Controles de modelo 3D

	Panorâmico	Move o modelo.
	Rotacionar	Rotaciona o modelo.
	Aumentar/Diminuir zoom	Aumenta ou diminui o zoom do modelo.
	Ajuste de zoom	Posiciona o modelo no centro da tela.
	Modo de exibição do molde	Ativar textura
		Desativar textura
		Exibe os dados em cores de textura reais.
		Exibe os dados em cor única.

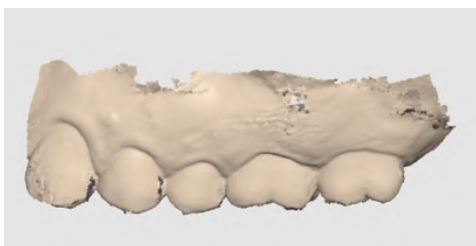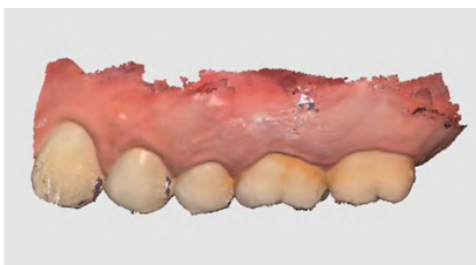

Partners

Você pode procurar parceiros em potencial para solicitar uma parceria e visualizar a lista de parceiros atuais.


Observação

Os serviços que usam o Google Maps não estão disponíveis no Medit Link China.

Procurar parceiros


É possível pesquisar usuários do Medit Link com base no nome e/ou endereço comercial.

Nos resultados da pesquisa, você pode enviar uma solicitação de parceria para uma empresa com a qual gostaria de trabalhar.

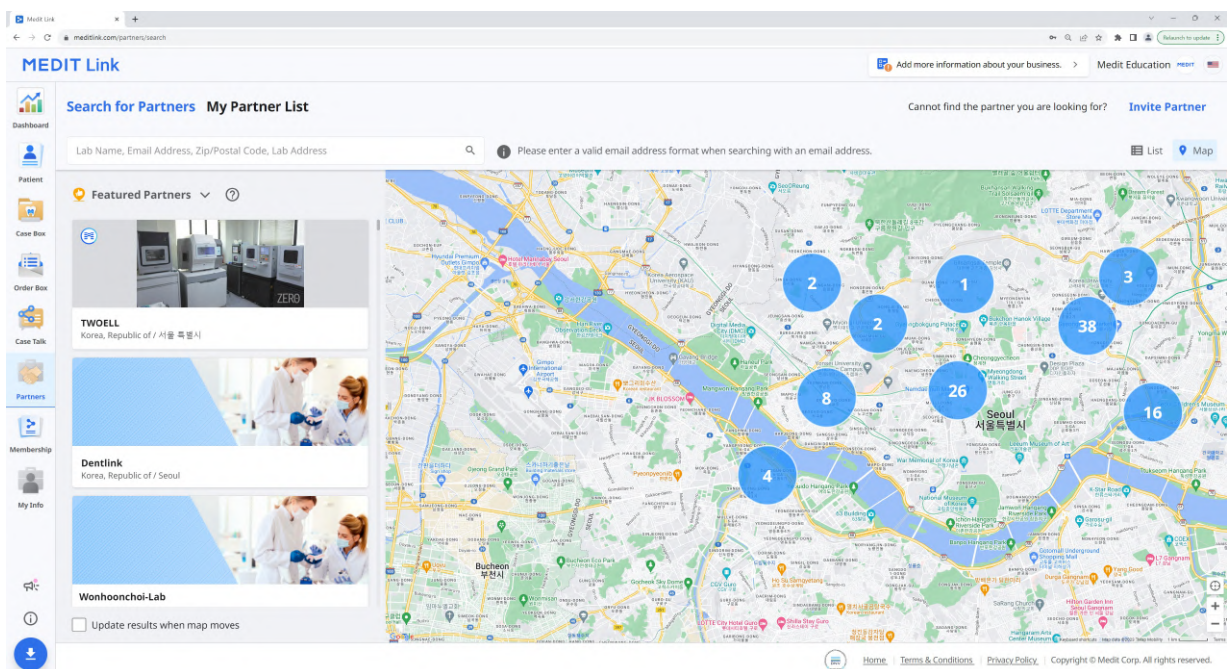

Minha lista de parceiros

Você pode revisar suas parcerias atuais com todas as suas empresas parceiras existentes em Minha lista de parceiros.

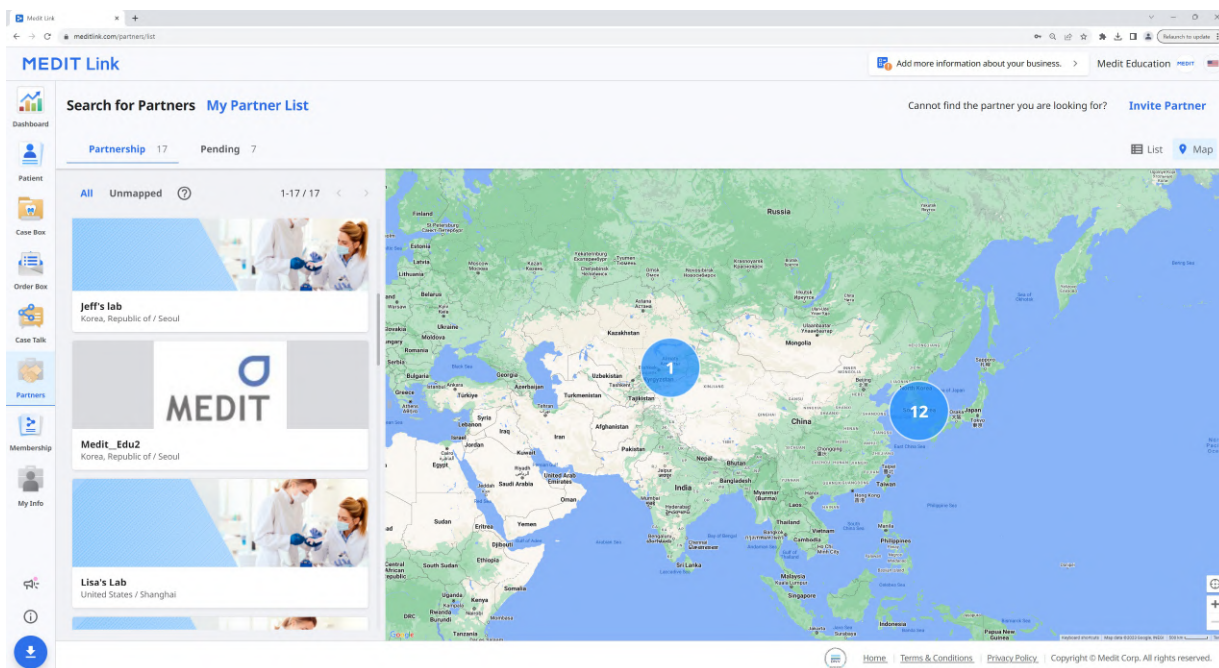

Convite para parceiro

Se você tem uma clínica ou um laboratório com o qual deseja trabalhar, pode convidá-lo para juntar-se ao Medit Link. A parceria será formada automaticamente assim que ela aceitar o convite.

1. Clique em "Convidar parceiro" no canto superior esquerdo da tela.
2. Digite o endereço de e-mail da empresa com a qual deseja trabalhar e envie um convite com uma solicitação de parceria.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Assim que a organização convidada aceitar o convite e se cadastrar no Medit Link, a parceria será automaticamente estabelecida.


Membership

Assinatura

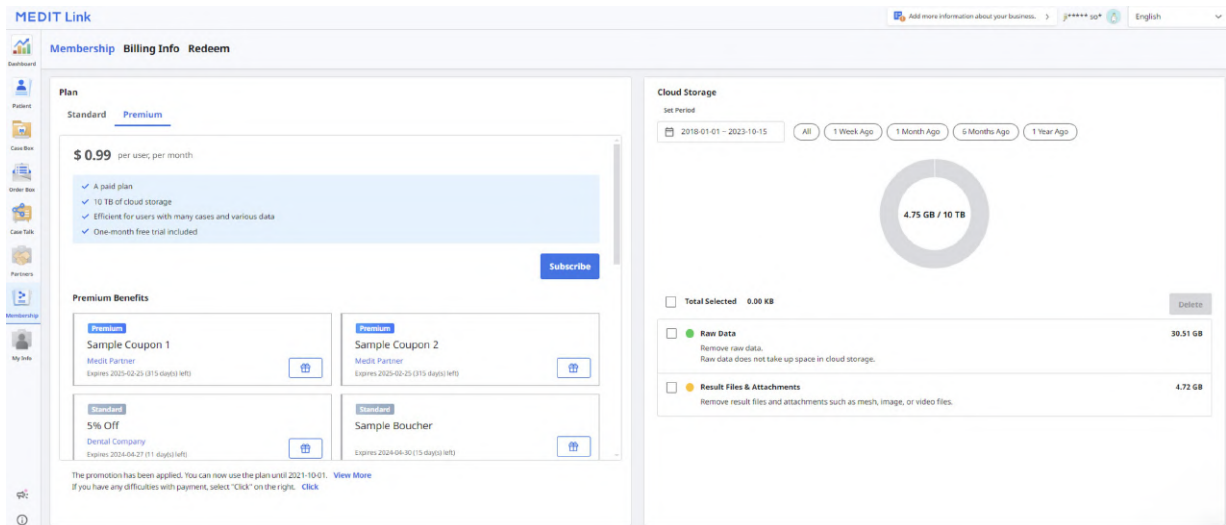

Plano

Você poderá ver o que cada plano oferece, incluindo cupons e vouchers de desconto, e o estado atual da sua assinatura. Você pode atualizar seu plano ou cancelar sua assinatura a qualquer momento.

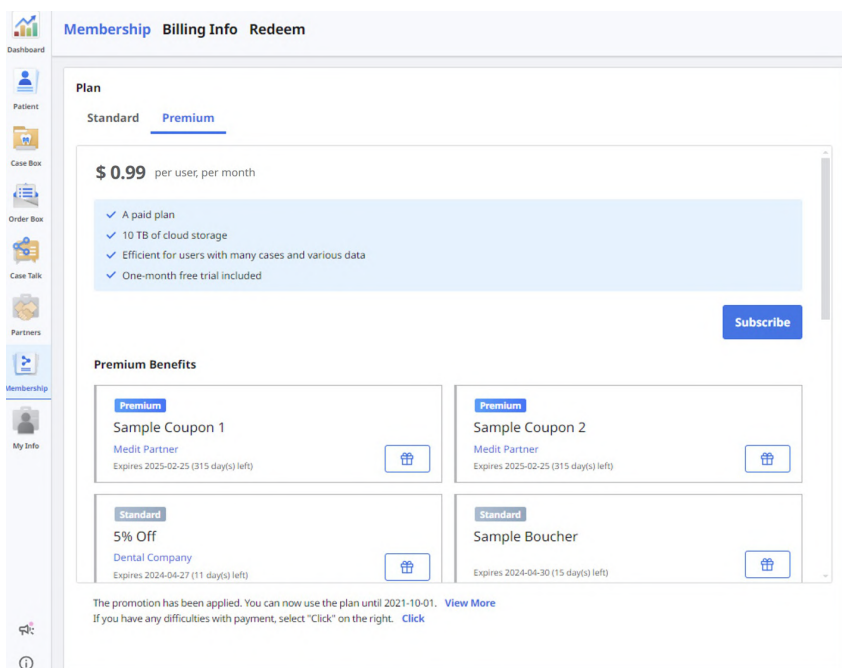

O MEDIT Link fornece os seguintes planos de assinatura:

Standard

- Plano padrão gratuito para todos os usuários cadastrados
- 1 GB de armazenamento em nuvem
- Para novos usuários

Premium

- Plano pago
- 10 TB de armazenamento em nuvem
- Para usuários com muitos casos e vários dados
- Teste gratuito por um mês

	Standard	Premium
Armazenamento na nuvem	1 GB	10 TB
Assinatura mensal	Gratuito	US\$ 0,99/mês


* O Armazenamento na nuvem não calcula o espaço ocupado pelos Dados brutos.

Observação

Os planos de assinatura estarão disponíveis no Medit Link China. Você pode usar o plano Premium gratuitamente até o lançamento oficial do recurso.

Armazenamento na nuvem

Na seção direita, você também pode gerenciar o armazenamento na nuvem.

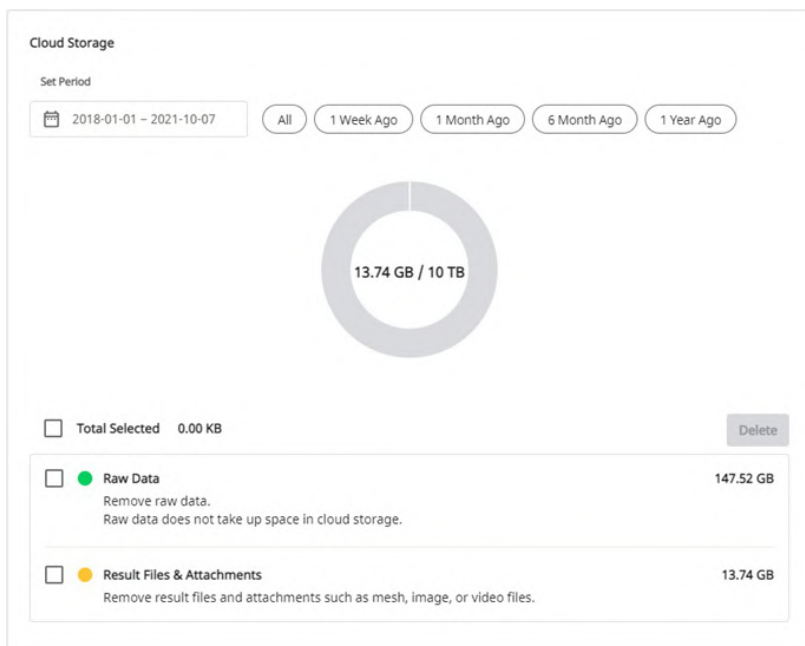


Definir período	Define o período específico para excluir os dados criados nesse intervalo de tempo. • Todos: Veja todos os arquivos. • Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação. • Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação. • Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação. • Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.
Dados brutos	Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente.
Resultados e anexos	Os arquivos anexos e de resultado ocupam o espaço na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.
Excluir	Remove os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço.

Inscriver-se


Se atualmente você estiver no plano Standard ou no plano Premium com um código de resgate, poderá assinar o plano Premium.

O pagamento é concluído por meio do serviço Stripe (www.stripe.com).

1. Acesse Assinatura > Plano > Premium e clique no botão "Inscriver-se".

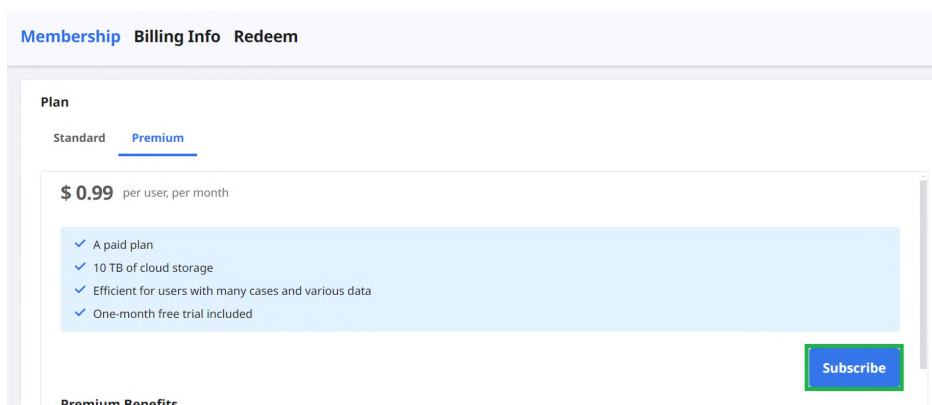

2. Verifique a descrição do plano Premium e clique em "Inscriver-se" novamente.

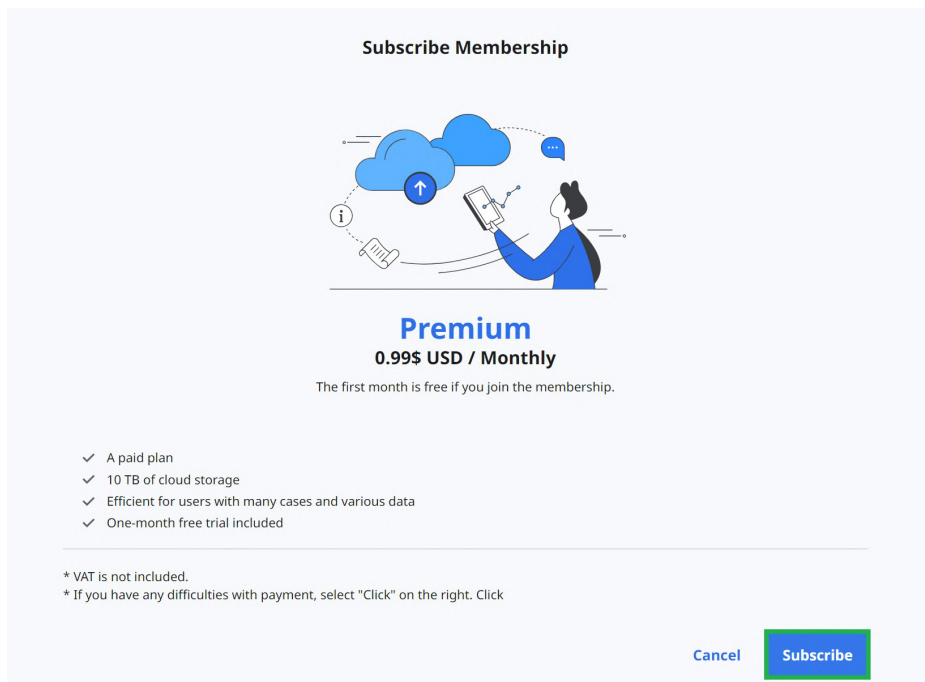

3. Verifique o preço e as condições e insira as informações necessárias para o pagamento. Depois, clique em “Inscrever-se”.

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic Medit Link Membership Billed daily	\$0.99
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription 100% off for a day	-\$0.99
Total due today	\$0.00

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with link ➡

Or pay with card

Email

Card information

Cardholder name

Country or region

▼

☐ **Securely save my information for 1-click checkout**
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

4. O pagamento pode levar alguns segundos. Quando terminar, você verá a mensagem de confirmação.

Subscribe Membership



Payment Successful.


[Invoice](#)

[Close](#)

Cancelar inscrição

Você pode cancelar a inscrição da assinatura a qualquer momento. Após cancelar a inscrição, você ainda poderá usar a assinatura Premium pelos dias restantes do mês já pago. Seu plano será alterado para Padrão a partir do próximo dia de pagamento e o armazenamento em nuvem será limitado a 1 GB. Se a capacidade de armazenamento em nuvem for ultrapassada, não será feito o backup dos arquivos e as funções de pedido e compartilhamento não estarão disponíveis.

1. Clique em "Cancelar inscrição".
2. Clique em "Cancelar assinatura".

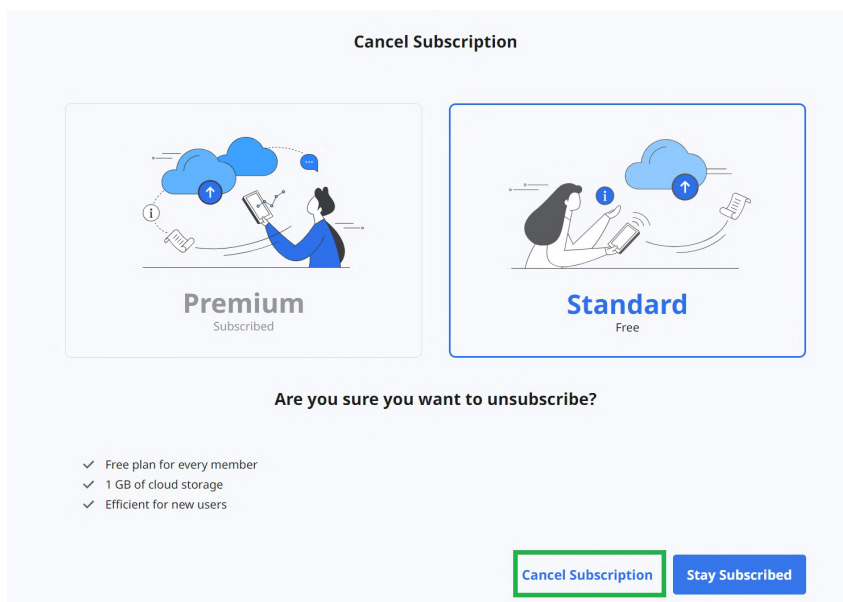

3. Para confirmar que deseja cancelar a inscrição, clique em "Cancelar assinatura" novamente na nova janela pop-up.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. A assinatura é cancelada.
5. Seu plano será alterado para Padrão a partir do próximo dia de pagamento e o armazenamento em nuvem será limitado a 1 GB. Se a capacidade de armazenamento em nuvem for ultrapassada, não será feito o backup dos arquivos e as funções de pedido e compartilhamento não estarão disponíveis.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Informações da fatura

Você pode verificar o histórico de pagamentos das assinaturas, incluindo uma fatura de cada pagamento. Você também pode adicionar ou alterar o método de pagamento, que será aplicado a partir do próximo pagamento agendado.

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Como adicionar um método de pagamento

1. Clique em "Editar método de pagamento".

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Clique em "Adicionar método de pagamento".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Insira as informações necessárias e clique em "Adicionar".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. O método de pagamento recém-adicionado será definido como padrão e usado para o próximo pagamento.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Como alterar um método de pagamento

1. Clique no ícone do menu expandido ao lado do método de pagamento que deseja alterar na janela da caixa de diálogo de faturamento.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Clique em “Tornar padrão” para definir o cartão selecionado como o método de pagamento padrão.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

Make default

Delete

BILLING INFORMATION

Resgatar

Registre o código de resgate fornecido como parte da promoção. Você pode usar a assinatura Premium com o código de resgate.

Registrar código de resgate

1. Insira o código de resgate e clique em "Registrar".

The screenshot shows the MEDIT Link web application interface. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The main content area is titled 'Register Redeem Code' and features a 'Redeem Code' input field with a 'Register' button. Below this is a section titled 'My Redeem Code' containing a table with the following data:

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30	Wonhoon-TestRedeem	Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

2. Leia o aviso e escolha "Registrar" ou "Aplicar" na caixa de diálogo pop-up.
 - **Registrar:** Registre o código de resgate. Você pode ativar e usar o código de resgate posteriormente após o registro.
 - **Aplicar:** Registre e ative o código de resgate. O desconto da promoção é aplicado imediatamente.

The screenshot shows a pop-up dialog box titled 'Register Redeem Code'. It contains the following text:

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Close', 'Register', and 'Apply'.

Ativar código de resgate

Você pode registrar vários códigos de resgate, mas precisa ativar aquele que deseja usar.

1. Clique no botão "Ativar" ao lado do código que deseja usar.
 - Caso não haja código com estado "Activated", aquele que você escolher será aplicado imediatamente.
 - Se já existir um código ativado, o código recém-selecionado muda para o estado "Waiting". Quando o código de resgate ativado no momento expirar, o novo código de resgate no estado "Waiting" será ativado automaticamente.


Observação

Apenas um código de resgate pode estar ativado e apenas um pode ficar no estado "Waiting".

My Info

Minha conta

Você pode revisar e editar as informações fornecidas durante o registro e verificar seu estado de assinatura.

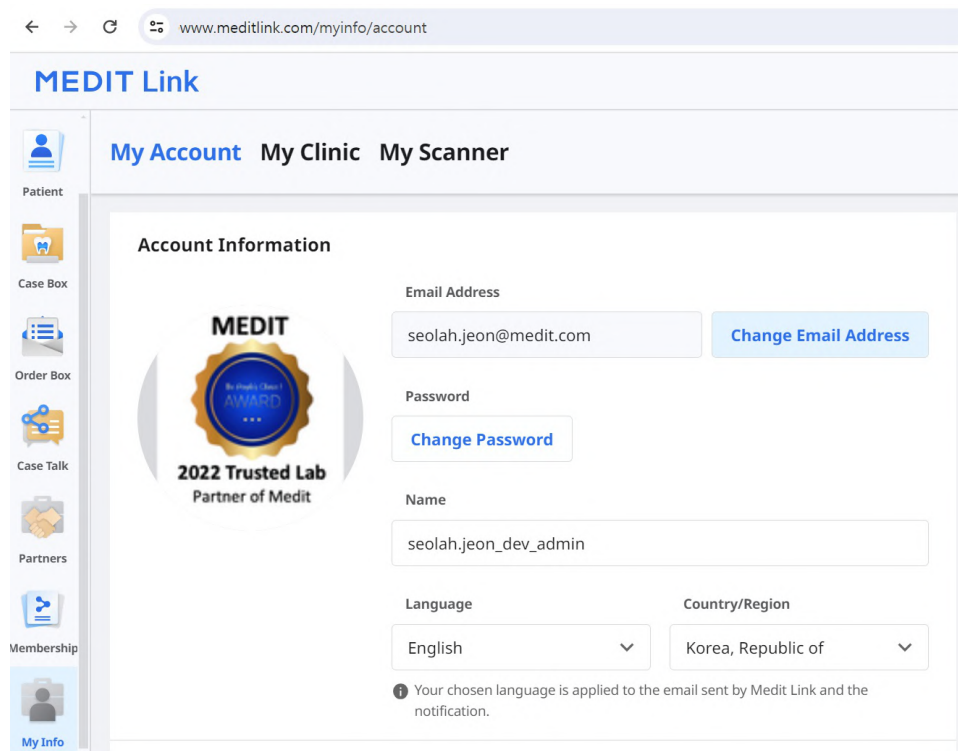

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `www.meditlink.com/myinfo/account`. The page header features the **MEDIT Link** logo and navigation tabs for **My Account**, **My Clinic**, and **My Scanner**. A left sidebar contains icons for **Patient**, **Case Box**, **Order Box**, **Case Talk**, **Partners**, **Membership**, and **My Info** (which is highlighted). The main content area is titled **Account Information** and includes a MEDIT logo with the text **2022 Trusted Lab Partner of MEDIT**. To the right of the logo are input fields for **Email Address** (containing `seolah.jeon@medit.com`), **Password**, and **Name** (containing `seolah.jeon_dev_admin`). There are **Change Email Address** and **Change Password** buttons. Below these are dropdown menus for **Language** (set to **English**) and **Country/Region** (set to **Korea, Republic of**). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

Minha clínica/Meu laboratório (apenas conta de Administrador)

Você pode revisar e editar as informações sobre sua clínica ou laboratório. Essa seção está disponível apenas para contas de administrador.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Meu scanner

Você pode verificar as informações do dispositivo conectado para a conta.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No.

Type

Serial Number

Usage Time ⓘ

Last Connected

Last Calibrated

Warranty Start Date

Warranty Expiry Da...

Days Left ⓘ

1

i500

-

-

-

-

-

-

-

2

i500

AA1911104453

0d 7h 18m

2023-04-14 12:48

2020-02-14 15:49

2019-12-02

2021-06-01

Expired

3

i500

AA1911104480

0d 0h 49m

-

2019-11-26 16:33

2019-11-19

2021-05-18

Expired

4

i500

AA1911104481

0d 5h 12m

-

2021-02-16 12:37

2019-11-21

2021-05-20

Expired

5

i700

AZ2105102622

0d 8h 15m

2022-09-21 12:09

2022-09-15 11:25

2021-07-09

2022-07-08

Expired

Buy

6

i700w

BF2112100021

0d 7h 4m

2023-04-03 17:42

2023-03-07 17:29

-

-

-

Buy

7

i700w

BF2202100048

19152d 22h 15m

2023-04-03 18:30

2023-03-24 10:35

-

-

-

Buy

8

i600

BG2202100024

0d 5h 47m

2023-07-31 16:10

2023-06-26 13:43

2022-03-30

2023-03-29

Expired

Buy

9

i600

BG2202100026

0d 5h 40m

2022-09-05 16:34

2022-08-11 11:25

-

-

-

Buy

10

i600

BG2202100029

0d 3h 10m

2022-08-10 11:05

2022-06-16 11:58

-

-

-

Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Menu Outros

Aviso e atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Páginas web relacionadas

Você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro de Ajuda Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Download do aplicativo Medit Link


Você pode baixar a versão mais recente do instalador do programa a partir da internet. Esse menu é útil quando você perde o instalador fornecido no pacote do produto ou possui um instalador desatualizado.

Observação

O Medit Link se atualiza automaticamente quando você tem uma conexão com a Internet.

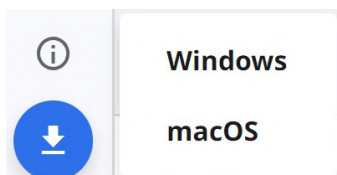

Visão geral

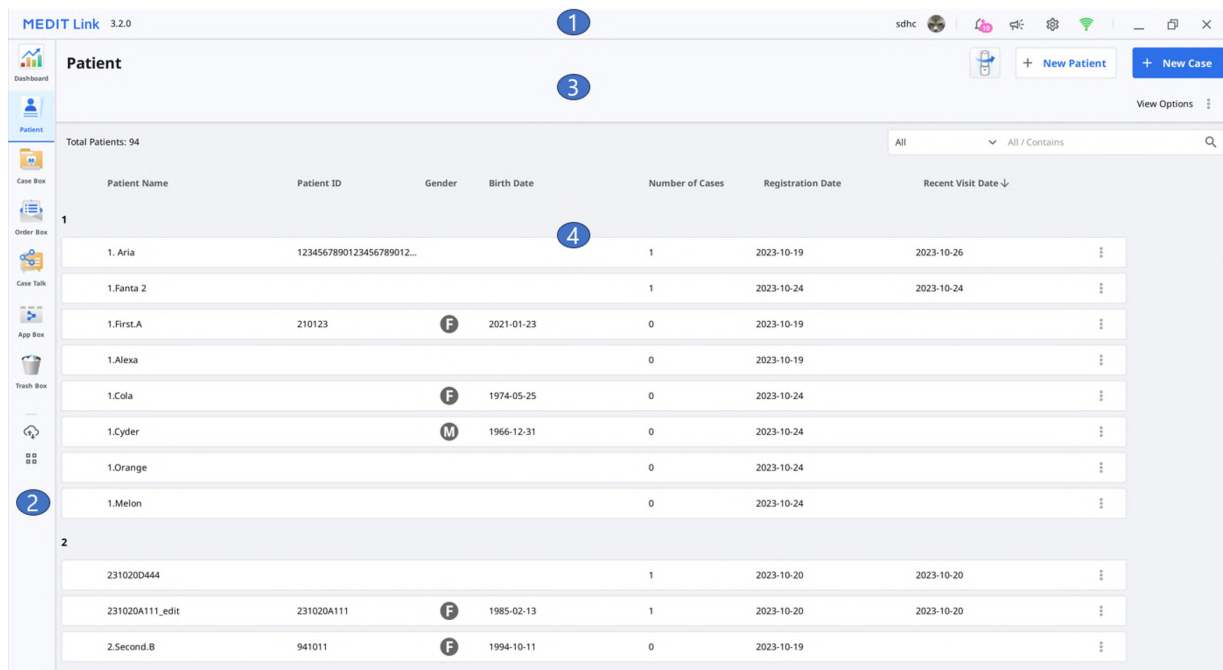

1	Barra de título	Consulte Aplicativo Medit Link > Barra de título para obter informações detalhadas.
2	Menu	Consulte Aplicativo Medit Link > Menu para obter informações detalhadas.
3	Ferramentas e funções	Consulte Aplicativo Medit Link > Visualizador de arquivos e Aplicativo Medit Link > Opções de visualização para obter informações detalhadas.
4	Lista de casos	Consulte Aplicativo Medit Link > Filtragem e pesquisa para obter informações detalhadas.

A tabela abaixo resume quais menus estão disponíveis em cada tipo de conta de clínica e de laboratório.

Tipo da conta		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Contas de clínica	Administrador	O	O	O	X	X	O	O	O
	Membro	O	O	O	X	X	O	O * Apenas funcionalidade de restauração	O
Contas de laboratório	Administrador	X	X	X	O	O	O	O	O
	Membro	X	X	X	O	O	O	O * Apenas funcionalidade de restauração	O

Barra de título

A barra de título fornece acesso rápido a funcionalidades como informações sobre a conta, notificações, notícias e atualizações, configurações e estado da rede.



Minhas informações

Minhas informações contém informações básicas de usuário, como imagem de perfil, nome da clínica ou do laboratório, endereço de e-mail e nome de usuário.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Notificações

Você pode ver notificações relacionadas a parcerias, pedidos e processos de trabalho.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Marque a caixa para mostrar apenas as mensagens não lidas. |
| 2 | Clique em qualquer notificação a fim de ir instantaneamente para o caso ou página da web relacionado. |

Notícias e Atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

Configurações

A caixa de diálogo Configurações permite aos usuários configurar o programa.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Consulte [Aplicativo Medit Link > Configurações](#) para obter informações detalhadas sobre as opções de configuração.

Estado da rede

O Medit Link permite que você use todas as funcionalidades de forma integrada quando conectado a uma rede.

Para ajudá-lo a verificar o estado da sua conexão de rede em tempo real, o ícone de estado de rede é exibido na barra de título.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Se a conexão de rede não estiver boa, poderão ocorrer as seguintes restrições:

- Algumas funções estarão restritas, como fazer o pedido de um caso, criar um caso, compartilhar via Case Talk e sincronização em nuvem.
- O desempenho geral do serviço pode ser reduzido devido ao impacto do ambiente de rede.

Nesse caso, você pode entrar no modo offline para realizar tarefas básicas e, depois, usar as funcionalidades que precisam de Internet quando estiver conectado novamente.

Observação

O símbolo de rede indica a velocidade de resposta entre a área atual e o AWS (Amazon Web Service). Isso não significa a velocidade da sua rede, por isso, às vezes, poderá mostrar o estado como razoável ou ruim, mesmo que a velocidade da sua rede seja rápida o suficiente.

Se o outro processo usar a mesma rede, a velocidade poderá ser razoável ou ruim e o desempenho geral do Medit Link poderá ser ruim. Nesse caso, não compartilhe a rede com outros processos.

Por exemplo, a funcionalidade "Fazer upload de dados brutos" ocupa grande parte do processo de rede. Se o símbolo mostrar um estado razoável ou ruim, acesse Configurações > Fazer upload de dados brutos e desative "Upload automático".

Configurações

Geral

Fornece opções para a configuração geral do sistema.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Pasta de salvamento	Especifica uma pasta para armazenar os resultados de dados gerados pelo Medit Link e programas conectados.	
Pasta de instalação de aplicativos	Especifique um caminho de instalação para aplicativos da Medit Apps e de parceiros disponíveis na App Box.	
Configurações de idioma	Seleciona o idioma para o programa.	
Rotulagem dentária	Seleciona um sistema de rotulagem dentária entre FDI e US.	
Notificações	Quando marcada, você receberá notificações de atualizações do programa.	
Fazer upload de dados brutos	Quando marcada, os dados brutos são carregados automaticamente para a nuvem. Isso ajuda a fazer backup dos dados originais e executar o escaneamento contínuo ao usar o Medit Link com a mesma conta em outro PC. O backup na nuvem de dados originais se aplica apenas aos dados adquiridos no Medit Scan for Clinics.	
Escaneamento rápido	Escolha se você gostaria que os estágios de escaneamento aparecessem automaticamente na parte de baixo no Medit Scan for Clinics, sem ter que preencher as informações do formulário. • Pré-operatório para maxila • Pré-operatório para mandíbula • Escaneamento da face	
Opções de visualização	Renderização avançada	Quando marcada, o modelo 3D é exibido em uma renderização mais vívida e realista.
	Ajustar textura de cor	Ajusta o brilho do modelo 3D. * As cores resultantes podem diferir ligeiramente do Medit Link quando você abre os mesmos dados com outro software.
Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit	Participe do Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit. • Usamos as informações coletadas para melhorar nossos produtos e serviços. • Não coletamos nenhuma informação que identifique indivíduos.	
Página padrão após iniciar a sessão	Selecione o menu padrão a ser exibido ao iniciar o programa. • As contas de clínicas podem escolher entre Patient e Case Box • As contas de laboratórios podem escolher entre In Box e Work Box	

Gerenciamento do armazenamento

Verifique e gerencie o espaço de armazenamento local e na nuvem.

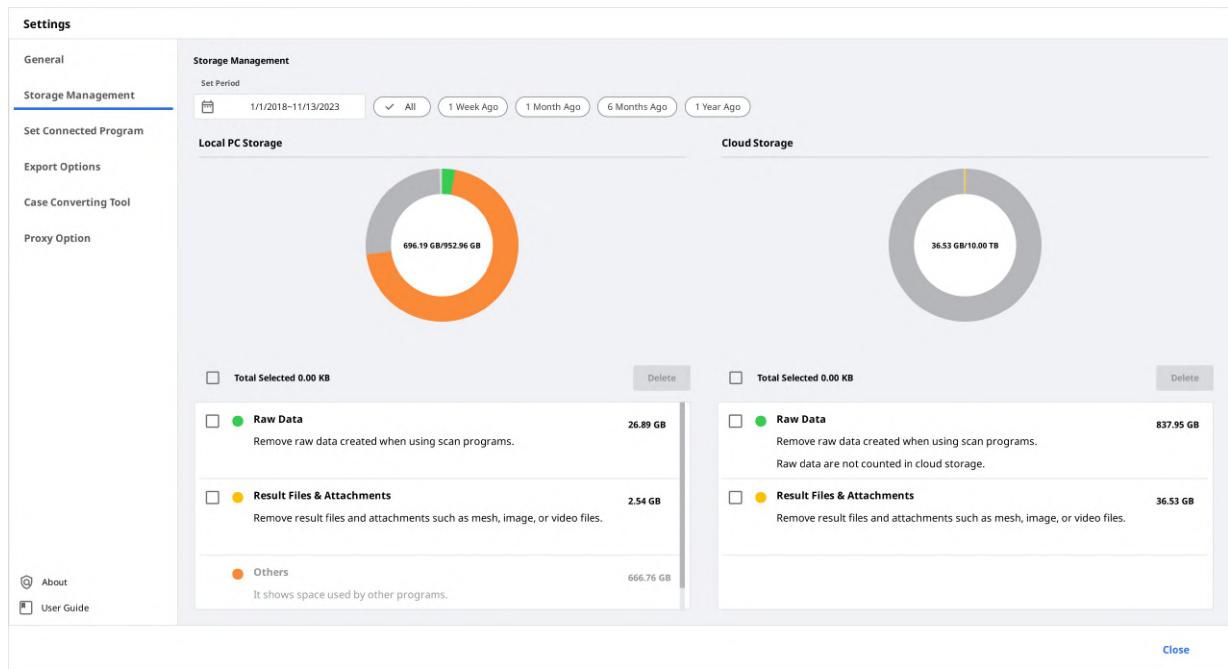

Definir período

Define o período específico para excluir os dados criados no intervalo de tempo abaixo.

- Todos: Veja todos os arquivos.
- Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação.
- Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação.
- Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação.
- Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.

Armazenamento local

Gerencie o espaço de armazenamento do PC.

Dados brutos	Remova os dados brutos selecionados do PC. Se os dados brutos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser.
Resultados e anexos	Remova os arquivos de resultado e anexos do PC, como malha, imagens e vídeos. Se esses arquivos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser.
Outros	Veja os arquivos usados para operar o sistema e outros programas. Isso mostra o armazenamento do seu PC. Você não pode remover esses arquivos do Medit Link.
Excluir	Remova os arquivos selecionados do PC.

Armazenamento na nuvem

Gerencie o espaço de armazenamento na nuvem.

Dados brutos	Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente, etc.
Resultados e anexos	Os arquivos de anexos e de resultado ocupam o espaço no armazenamento na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.
Comprar armazenamento	Se você estiver no plano Padrão, assine o Premium para expandir seu armazenamento em nuvem.
Excluir	Remova os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço de armazenamento.

Definir o programa conectado

Gerencie os programas que suportam a integração ao Medit Link.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ Medit Scan for Clinics
C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_jScan.exe

Apply

Close

Não é possível conectar os seguintes programas:

	Conta de clínica	Conta de laboratório
Programa de escaneamento	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Observação

A integração dos seguintes serviços não está disponível no Medit Link para Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Opções de exportação

Defina como exportar arquivos do Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Tipo do CAD	Selecione o programa CAD que deseja usar para projetar. O programa ajustará os resultados com base na sua seleção, permitindo que você prossiga com o projeto sem nenhum alinhamento de eixo adicional.
Exportar arquivos para	Especifique o caminho onde deseja armazenar os resultados.
Formato de malha	Especifique o formato do arquivo de malha final.
Formato da imagem	Especifique o formato dos arquivos de imagem exportados.
Comprimir e combinar	Comprime todos os resultados em um único arquivo. Combinar malha individual: Combine todos os resultados para maxila ou mandíbula em um arquivo. Ao usar alguns programas que não podem importar e trabalhar com vários arquivos, você pode mesclá-los em um para trabalhar neles.
Opções quando a mesma pasta ou arquivo já existem.	Escolha a ação padrão para casos em que a mesma pasta ou nome de arquivo existe no caminho alvo. • Perguntar sempre ao exportar. • Exportar um novo arquivo e substituir os arquivos existentes. O arquivo atualmente armazenado será perdido. • Criar uma pasta e exportar os arquivos.
Regra para nome das pastas	Defina regras para criar um nome de pasta ao exportar arquivos. As regras definidas serão aplicadas à nomenclatura das pastas, e o arquivo exportado será salvo na pasta criada. As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra. • Conta de clínica Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido • Conta de laboratório Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido
Regra para nome dos arquivos	Defina regras para o nome do arquivo exportado. As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra. • Conta de clínica Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido • Conta de laboratório Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido

Ferramenta de conversão de casos


Você pode mover casos entre contas diferentes exportando casos existentes da conta ou importando casos exportados de outras contas.

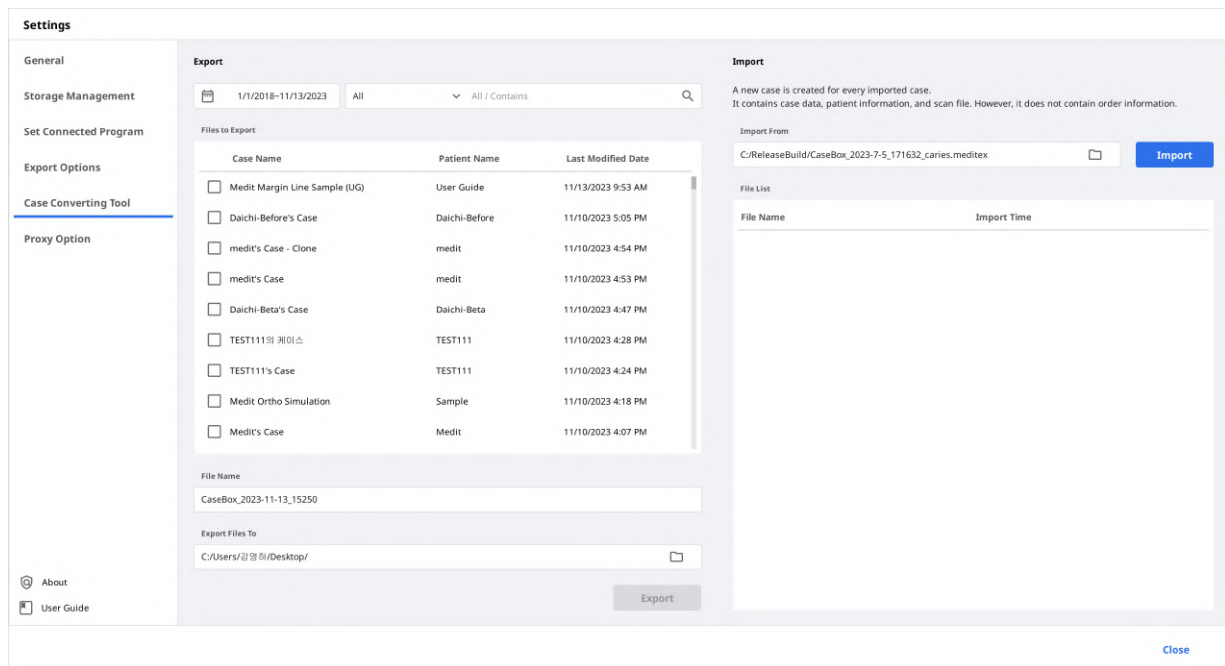


Exportar caso

Exporte casos da conta conectada atualmente para o PC local.

1. Abra o Medit Link e clique no ícone Configurações.

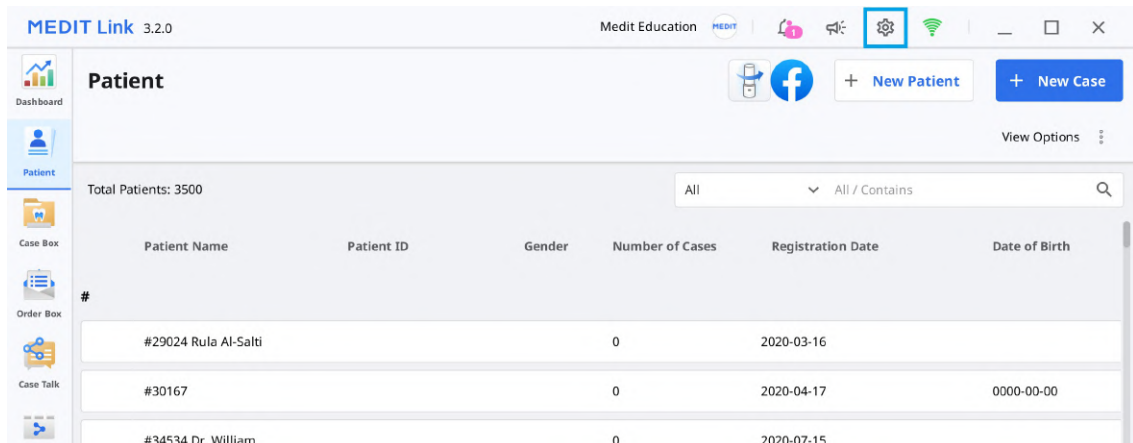

2. Escolha a seção "Ferramenta de conversão de casos" no menu esquerdo.

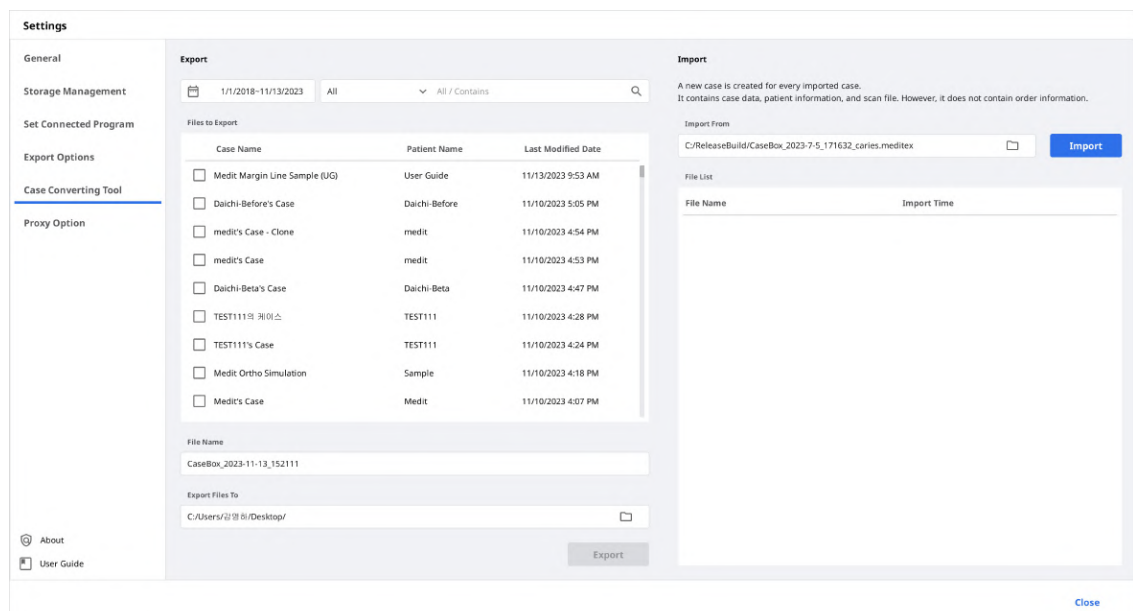

3. Na seção Exportar, defina um período ou pesquise casos para exportar, se necessário.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스

☐ TEST111's Case

☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. Escolha os casos que deseja exportar na lista da seção "Arquivos para exportar".

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Defina o nome do arquivo editando o nome do caso no campo Nome do arquivo.
6. Defina a pasta de destino para a qual exportar os casos selecionados.
7. Clique em "Exportar".
8. Clique em "Sim" a fim de abrir a pasta para a qual o arquivo foi exportado.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Os casos exportados são salvos no formato de arquivo .meditex.

Importar caso

1. Abra o Medit Link e clique no ícone Configurações.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Settings icon highlighted


Patient

Total Patients: 3500


All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	


2. Escolha a seção "Ferramenta de conversão de casos" no menu esquerdo.

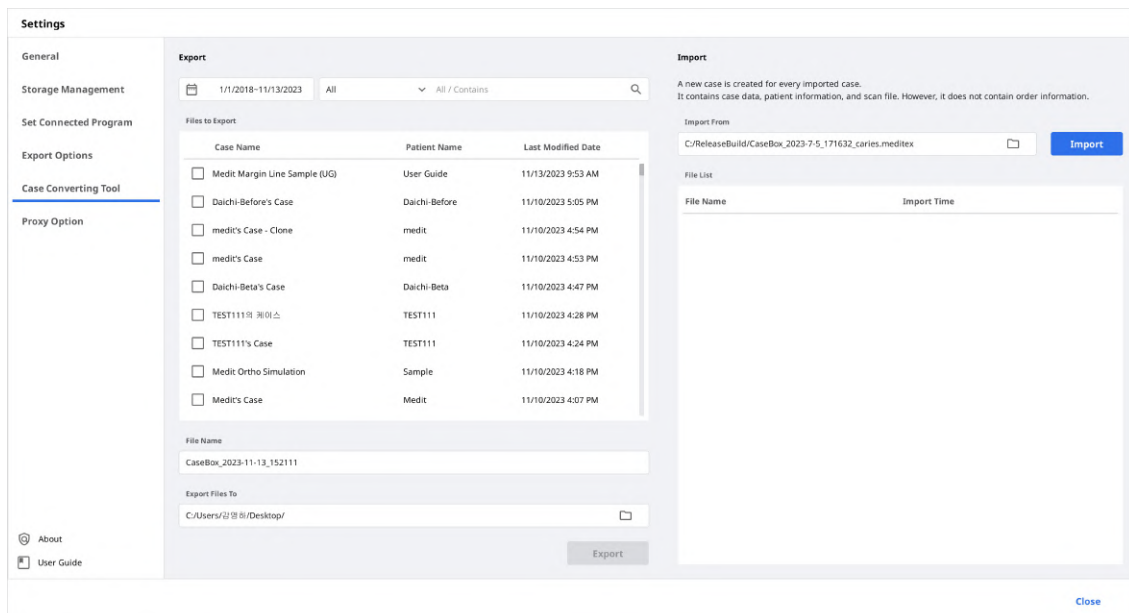

3. Na seção Importar, clique no ícone da pasta para procurar no seu PC o arquivo .meditex que deseja importar.

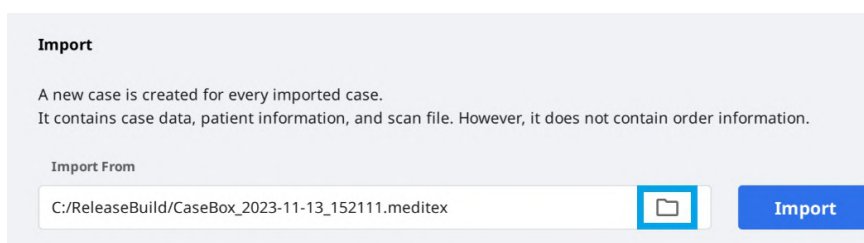

4. Clique no botão "Importar" e verifique os arquivos a importar na lista abaixo.

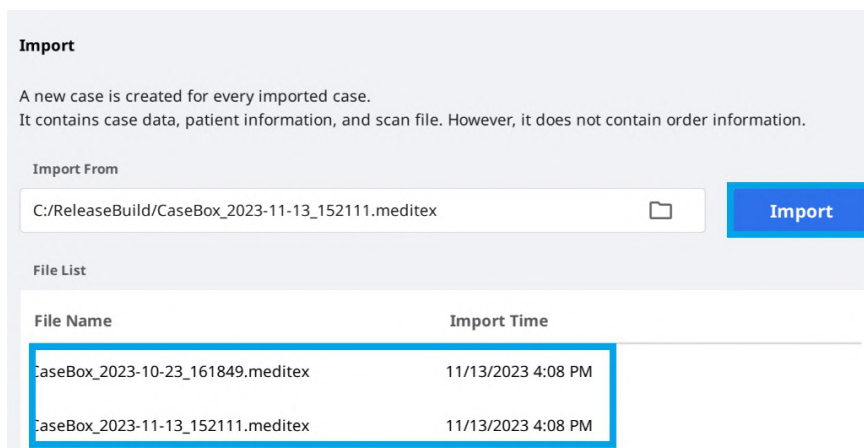

5. O caso importado aparecerá também na sua Case Box (conta de clínica) ou Work Box (conta de laboratório).

Opções de proxy

Em alguns ambientes de rede limitados, você pode alterar as configurações de rede.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Sobre

Exibe informações detalhadas sobre o Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Guia do usuário


Mostra o Guia do usuário do Medit Link.

Para abrir o guia do usuário, é preciso uma conexão com a Internet.

Menu

Dashboard

É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

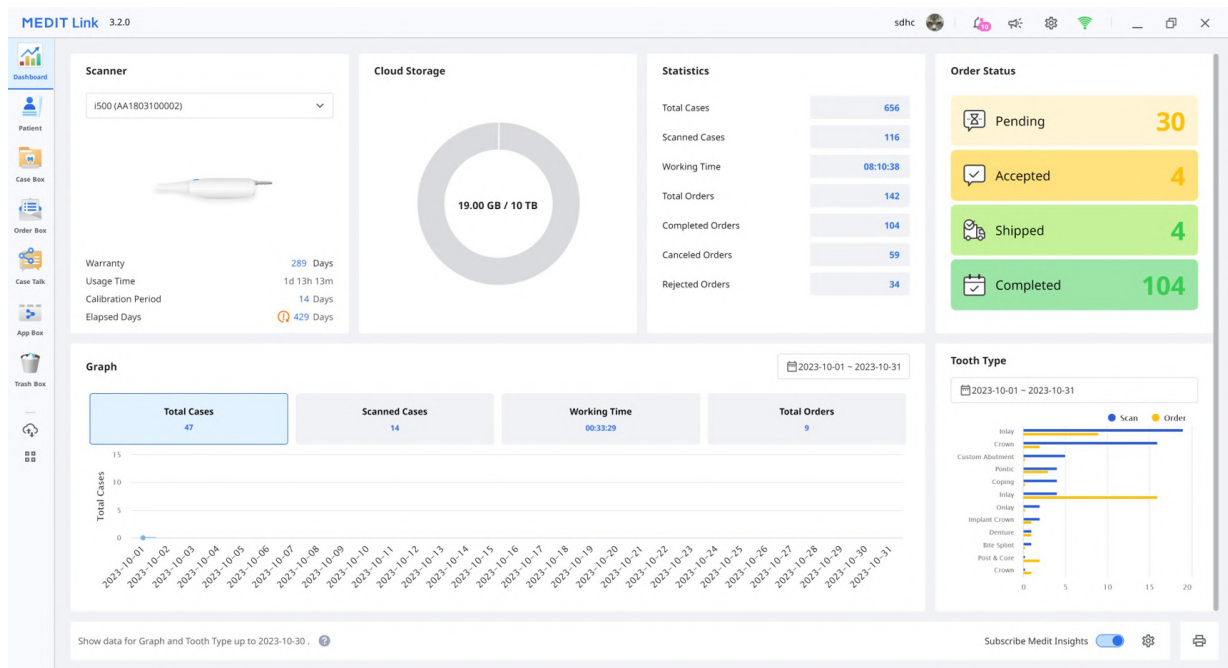

Observação

Consulte [Medit Link Web > Dashboard](#) para obter mais informações sobre o dashboard e o Medit Insights.

Patient

É possível adicionar, editar, excluir ou mesclar pacientes no menu Patient.

Patient

Total Patients: 106

Search: All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
KELLY				1	2021-07-02	Scan
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
newpatient				1	2022-10-13	Scan
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan

Adicionar novo paciente

1. Clique em "Novo paciente".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. Preencha as informações necessárias na caixa de diálogo Novo paciente e clique em "Salvar".

Excluir paciente

Observação

Você pode excluir um paciente apenas se não houver casos para ele.

1. Selecione o paciente a ser excluído da lista.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Temporaries				0	2023-10-04	
T.O.P.	카미야	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Clique em "Excluir".

Mesclar pacientes

Você pode mesclar todos os casos de vários pacientes em um paciente.

1. Selecione os pacientes que você deseja mesclar da lista.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Temporaries				0	2023-10-04	
T.O.P.	카미야	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Clique em "Mesclar pacientes".
3. Selecione o paciente alvo no qual você gostaria de mesclar todos os casos.
4. Todos os casos são mesclados no paciente alvo e as informações do paciente alvo são mantidas.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Clique em "Aplicar" para continuar com a mesclagem.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Type Method Material Shade Favorites

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

Cancel Save

1	Exibe os nomes do caso e do paciente.
2	Fornecer as principais funcionalidades disponíveis: botão Escanear ou Abrir, botão Pedido, ícones de aplicativos.
3	Exibe as guias disponíveis: Formulário, Visualizador de arquivos.
4	Exibe funções de gerenciamento de casos e arquivos.
5	Mostra a IU de registro de formulário para o programa de escaneamento selecionado.
6	Fornecer as informações de tipo/método/material/tonalidade para os usuários escolherem em relação ao número de dente selecionado.
7	Exibe as informações de tipo/método/material/tonalidade aplicadas aos dentes selecionados.

Guias em Case Box/Work Box


Formulário	Visualizador de arquivos
A guia de formulário fornece uma UI para inserir informações básicas para o trabalho de escaneamento, como tipo, método, material para números de dentes e opções de escaneamento. As informações inseridas são passadas para o programa de escaneamento conectado e usadas como informações de pedido ao fazer um pedido para o seu parceiro.	Visualize os arquivos de resultados gerados pelos programas de escaneamento e CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.

Funções em Case Box/Work Box

As seguintes funções são fornecidas na Case Box/Work Box.

	Estado do caso	Exibe o estado do caso.								
	Acesse a Order Box/In Box	Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Informações sobre o caso	Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.								
	Notas e etiquetas	Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.								
	Histórico do caso	Fornece informações detalhadas sobre o histórico do caso. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Excluir	Exclui o caso. Não é possível excluir casos solicitados ou criados offline.								
	Clonar	Cria uma duplicata do caso atual na Case Box. Todos os dados serão copiados para o caso clonado. Essa funcionalidade ajuda a replicar informações de tratamento para o mesmo paciente ou fazer um pedido adicional com as mesmas informações ou arquivos.								
	Anexar	Anexa arquivos em vários formatos.								
	Exportar	Exporta arquivos de resultado de escaneamento ou CAD para o PC local. Você pode escolher seu formato de arquivo preferido ao exportar arquivos. Os arquivos exportados podem ser usados em software CAD e CAM para trabalhos posteriores.								
	Compartilhar	Cria um link para compartilhamento. Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais. É possível compartilhar o link livremente com qualquer pessoa ou apenas com pessoas específicas. Um código PIN ou uma data de validade do link podem ser definidos para proteger informações particulares.								
	Enviar pedido de suporte	Abre uma página do Centro de ajuda Medit para permitir o envio de uma solicitação de suporte.								

Order Box/In Box

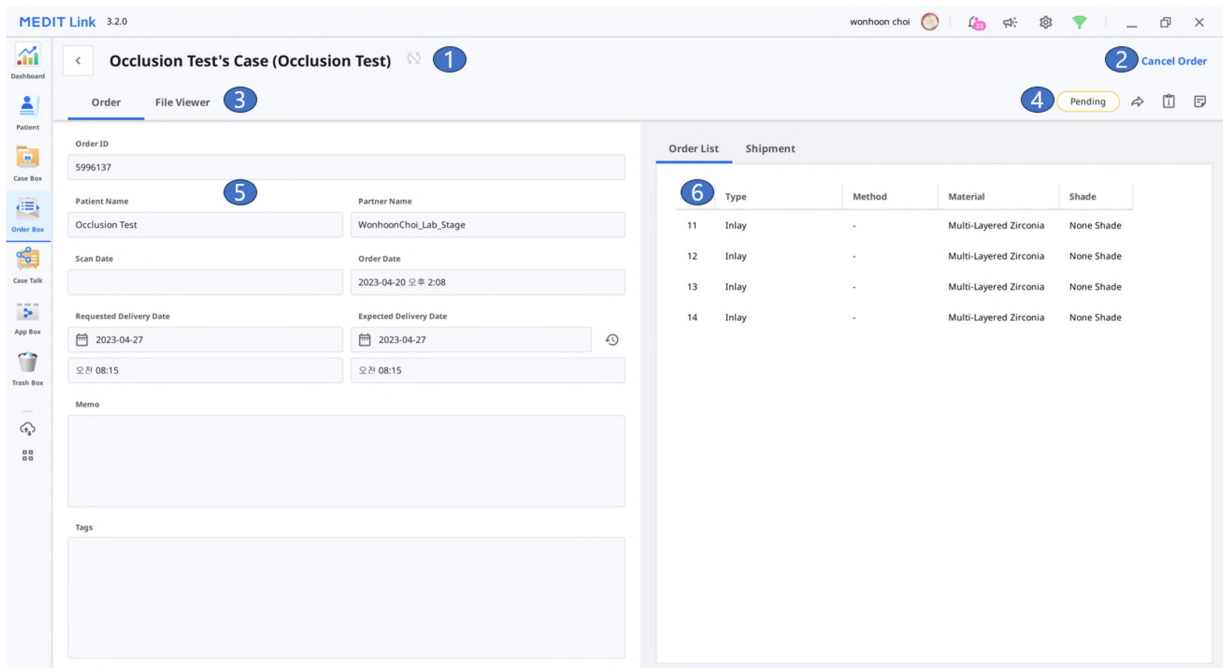

1	Exibe os nomes do caso e do paciente.
2	Fornecer funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).
3	Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.
4	Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.
5	Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.
6	Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.

Guias em Order Box/In Box

Pedido	Visualizador de arquivos
Verifique as informações detalhadas relacionadas ao pedido, como número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.	Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.

Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.

O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no Case Talk do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

Observação

O serviço Case Talk exige conexão com a internet.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Casos compartilhados podem ser visualizados por meio de um navegador da web sem instalar um programa separado, permitindo uma comunicação fácil sobre os dados 3D em vários dispositivos.

App Box

A App Box fornece vários programas complementares que suplementam seu fluxo de trabalho de escaneamento básico e aumentam a produtividade. Você pode fazer download e instalar os aplicativos fornecidos para criar dispositivos dentários, analisar dados de escaneamento, ajudá-lo durante uma consulta ou agilizar seu processo de trabalho.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update]
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed]
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install]
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install]

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install]
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install]
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install]
- iie systems connector**: PRM specialized for orthodontics. [Install]
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install]
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS.
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link.
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS.
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS.

Tudo


A guia "Tudo" mostra a lista de todos os aplicativos fornecidos, incluindo aplicativos originais desenvolvidos pela Medit (Medit Apps) e aplicativos de parceiros, que são aplicativos de integração com parceiros da Medit de diversos setores da odontologia digital, como impressão 3D, software de CAD/CAM, etc.

Medit Apps

A guia "Medit Apps" mostra apenas a lista de aplicativos originais desenvolvidos pela Medit.

Baixados

A guia "Baixados" mostra a lista de aplicativos atualmente instalados no seu PC e dos aplicativos que possuem histórico de download pela conta do usuário.

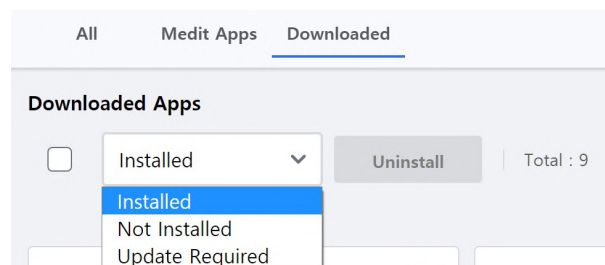

- **Instalados:** essa opção mostra apenas os aplicativos instalados no PC no qual o usuário fez login.
- **Não instalados:** essa opção permite ver os aplicativos instalados em outros PCs para que você possa instalá-los rapidamente.
- **Atualização necessária:** essa opção mostra apenas os aplicativos instalados no PC atual que precisam ser atualizados.

Trash Box

A Trash Box armazena temporariamente os casos excluídos. Qualquer caso na Trash Box pode ser restaurado ou excluído permanentemente.

⚠ Cuidado

Os dados excluídos da Trash Box serão excluídos permanentemente do seu PC e do servidor e não poderão ser recuperados.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_외출판트 46, 47's Case - Clone - Clone	외출판트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Gerenciador da sincronização de casos

O Gerenciador da sincronização de casos ajuda a fazer upload e download de casos no Medit Link. Você pode fazer o upload de vários casos para a nuvem ou fazer o download deles para o PC local.

[illegible]

Upload

Total de casos/Casos selecionados	Verifique o número de todos os casos/casos selecionados que precisam ser transferidos por upload.
Upload de todos	Faça o upload de todos os casos para a nuvem.
Cancelar todos	Cancele todas as solicitações de upload.
	Faça o upload do caso para a nuvem.
	Cancele o upload do caso.
	Tente novamente fazer o upload do caso.

Download


Total de casos/Casos selecionados	Verifique o número de todos os casos/casos selecionados que precisam ser baixados por download.
Baixar todos	Faça o download de todos os casos para o PC.
Cancelar todos	Cancele todas as solicitações de download.
	Faça o download do caso para o PC.
	Cancele o download do caso.
	Tente novamente fazer o download do caso.

Páginas web relacionadas

Você pode acessar diretamente menus disponíveis apenas no Medit Link Web, como My Info, Partners e Membership. Consulte Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) e [My Info](#) para obter descrições detalhadas dos menus do Medit Link Web.

Você pode acessar a loja online da Medit, a Medit Shop, onde pode adquirir garantias estendidas para scanners e outros produtos da Medit, como mochilas para scanners.

Além disso, você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Centro de ajuda Medit, o canal do YouTube da Medit Academy e a plataforma de educação online Medit Academy.

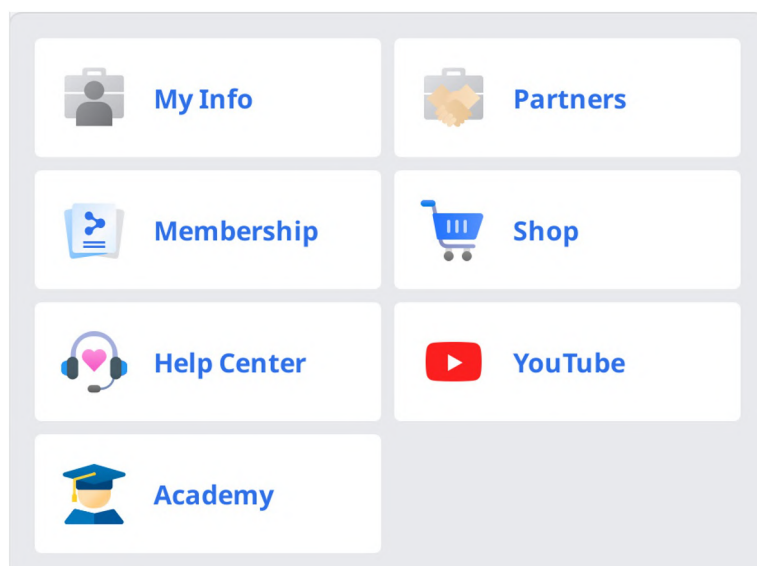

Visualizador de arquivos

O Visualizador de arquivos agrupa e mostra vários dados, incluindo os adquiridos de programas vinculados ao Medit Link e aqueles anexados pelos usuários.



Ele fornece funções básicas de gerenciamento, como exibir/ocultar dados, ajustar a opacidade e excluir dados.

Ele suporta pré-visualizações de arquivos nos seguintes formatos:

- Dados 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagens 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Arquivos de vídeo: MKV, MP4, AVI, WMV

Árvore de dados

Você pode agrupar e exibir todos os dados do caso na árvore de dados. Também é possível exibir/ocultar dados, ajustar a transparência e excluir dados da árvore de dados.

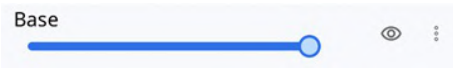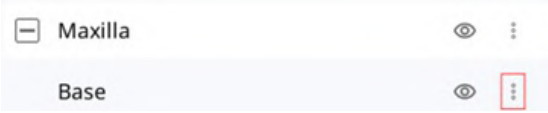	Exibir/Ocultar	É possível exibir ou ocultar os dados.
	Opacidade	A barra deslizante aparece quando você clica em um dos dados na árvore de dados. Você pode ajustar a opacidade dos dados exibidos movendo a barra deslizante. 
	Mais	Clicar no ícone Mais mostra os recursos adicionais disponíveis.  • Exibir somente este: Oculta todos os outros dados e exibir apenas os dados correspondentes. • Ocultar: Oculta os dados. • Duplicar: Copia os dados e os adiciona ao grupo de anexos. • Exportar: Exporta os arquivos selecionados. • Mudar o nome: Altera o nome dos dados. • Excluir: Exclui os dados.





Observação

Você pode mudar o nome dos dados quando está online.


Ferramentas de controle de modelo

Controle de modelo 3D

	Panorâmico	Move o modelo.
	Rotacionar	Rotaciona o modelo.
	Aumentar/diminuir zoom	Aumenta e diminui o zoom do modelo.
	Ajustar zoom	Posiciona o modelo no centro da tela.
	Modo de exibição do modelo	Ativar textura
		Desativar textura
	Configurações da grade (mm)	Ativar grade
		Ativar overlay
		Desativar grade
		Ocultar a grade.

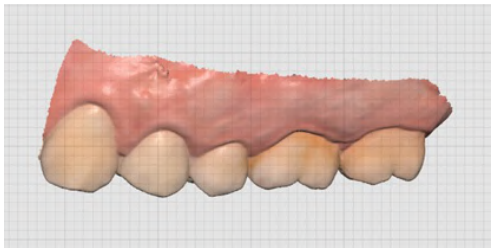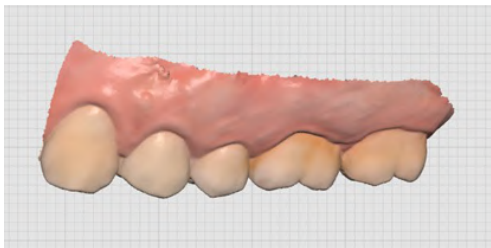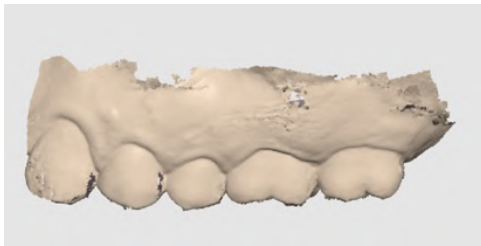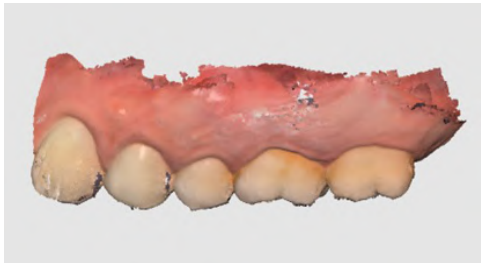

Controle de imagem 2D

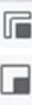
	Próxima imagem/Imagem anterior	Move entre imagens.
	Editar	Edita a imagem.
	Pinçar/Colar janela	Você pode destacar a janela de imagem e ajustá-la na posição desejada. Você pode redimensionar a janela. Quando a janela é restaurada ao seu local original, ela retorna ao seu tamanho padrão.

Ferramentas de função

Captura de imagens e nota


Capture a tela atual como imagem 2D, desenhe nela ou adicione avisos.


Você pode salvá-la como um arquivo com seus avisos e enviá-la como referência.

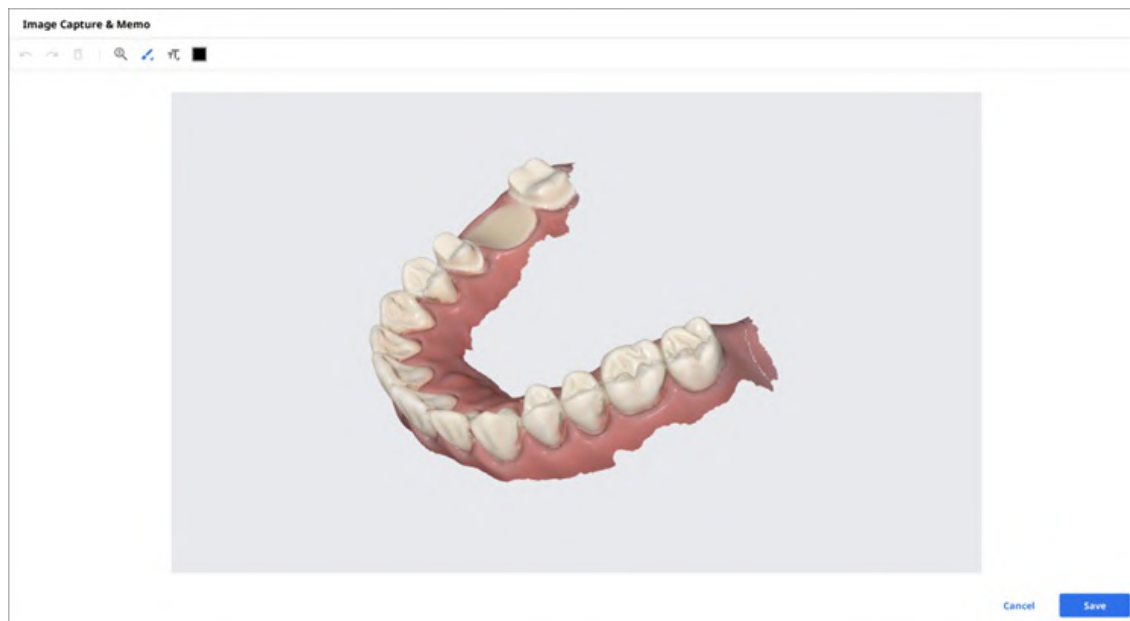

Captura de ortodontia


Capture as imagens na direção de visualização atual e superior/inferior/esquerda/direita a partir da direção de visualização atual.

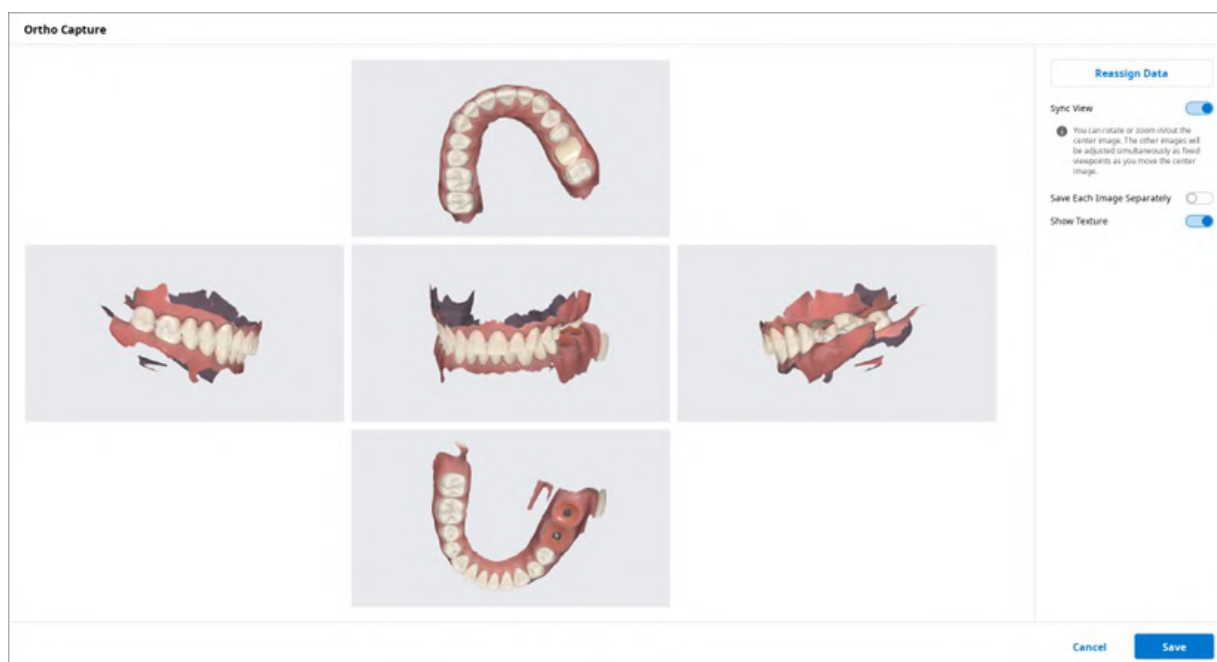

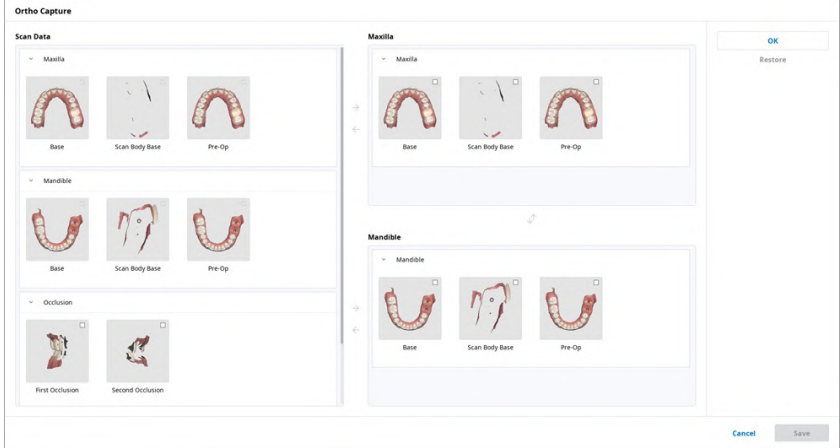Sincronizar visualização	Quando ativada, você pode girar ou ampliar/diminuir o zoom da imagem central. As outras imagens serão ajustadas simultaneamente como pontos de vista fixos conforme você move a imagem central. Quando desativada, você pode usar uma imagem panorâmica, rotacionar ou aumentar/diminuir o zoom de todas as imagens individualmente.
Salvar cada imagem separadamente	Salve cada imagem com alta resolução.
Exibir textura	Ativa/desativa a textura do modelo.
Reatribuir os dados	Altere os dados de maxila/mandíbula com a funcionalidade Reatribuir os dados. Você pode usar os dados alterados para criar e utilizar as imagens resultantes de Captura de ortodontia.  • Dados de escaneamento: Todos os dados de escaneamento do caso são exibidos. • Maxila: Os dados que você selecionou para a maxila são exibidos. • Mandíbula: Os dados que você selecionou para a mandíbula são exibidos.


Preencher buracos

Preencha buracos em dados de malha 3D.

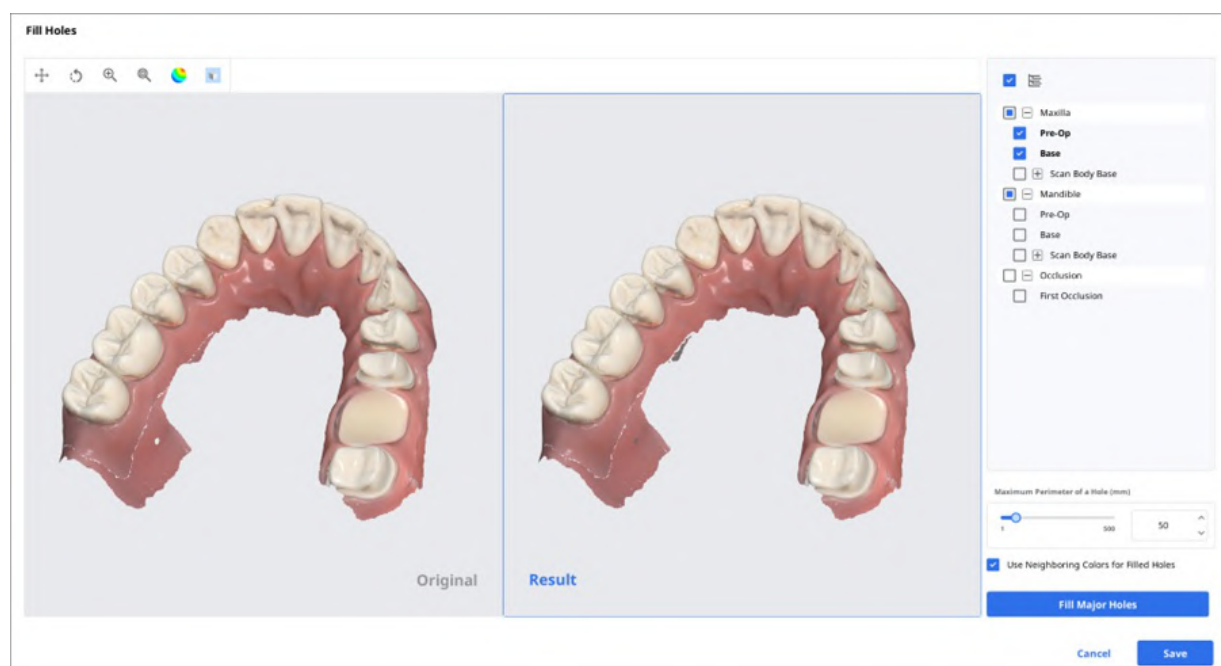

Recorte


O Recorte fornece várias ferramentas para editar dados.

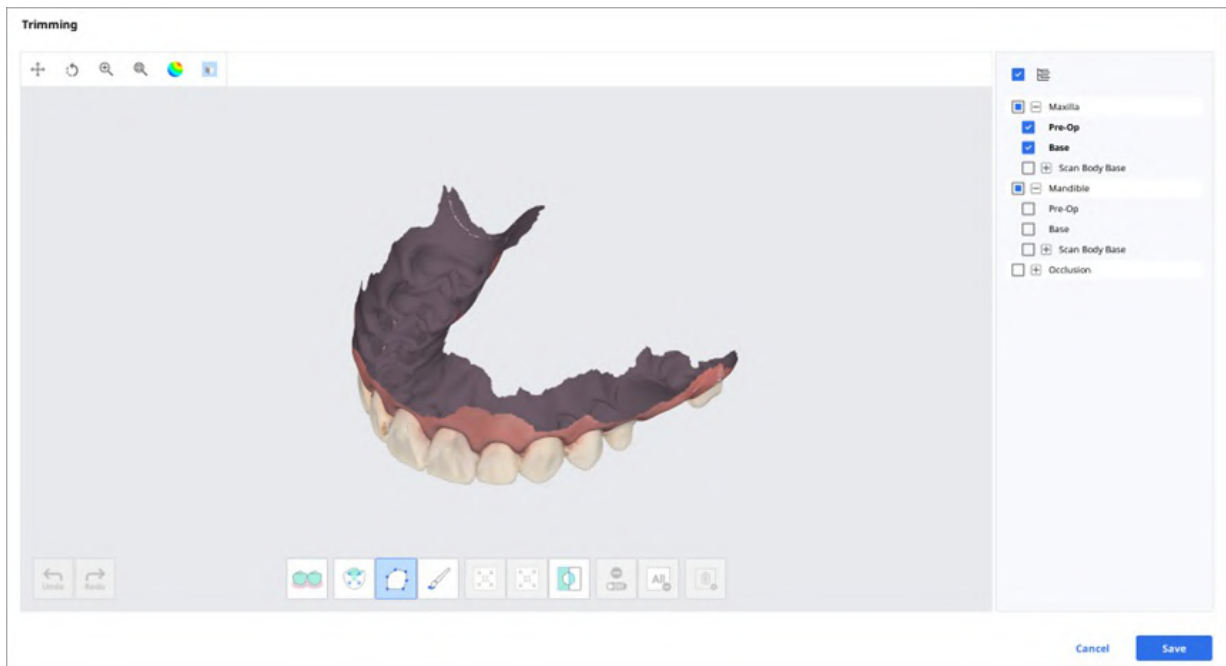

Os dados de malha 3D selecionados podem ser editados utilizando diferentes ferramentas localizadas no canto inferior da janela.

Seleção		Seleção inteligente dos dentes	Seleciona automaticamente todos os dentes da arcada, removendo as partes da gengiva. Observação Essa função está disponível apenas para dados de escaneamento adquiridos usando o Medit Scan for Clinics com a opção "Usar GPU" ativada.
		Seleção inteligente do dente	Seleciona automaticamente a área de um único dente com um clique. Você pode clicar ou arrastar no dente.
		Seleção de polilinhas	Seleciona todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela.
		Seleção em pincel	Seleciona todas as entidades na tela em um caminho desenhado à mão. Apenas a vista frontal será selecionada. O pincel vem em três tamanhos.
Ajuste da área selecionada		Encolher a área selecionada	Reduz a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.
		Expandir a área selecionada	Expande a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.
		Inverter a área selecionada	Inverte a seleção.
Cancelamento de seleção		Seleção/Cancelamento de seleção	Quando ativa, cancela a seleção da área utilizando várias ferramentas.
		Limpar toda a seleção	Limpa todas as áreas selecionadas.
		Excluir a área selecionada	Exclui os dados da área selecionada.

1. Selecione a área que deseja recortar com as ferramentas de seleção de área.

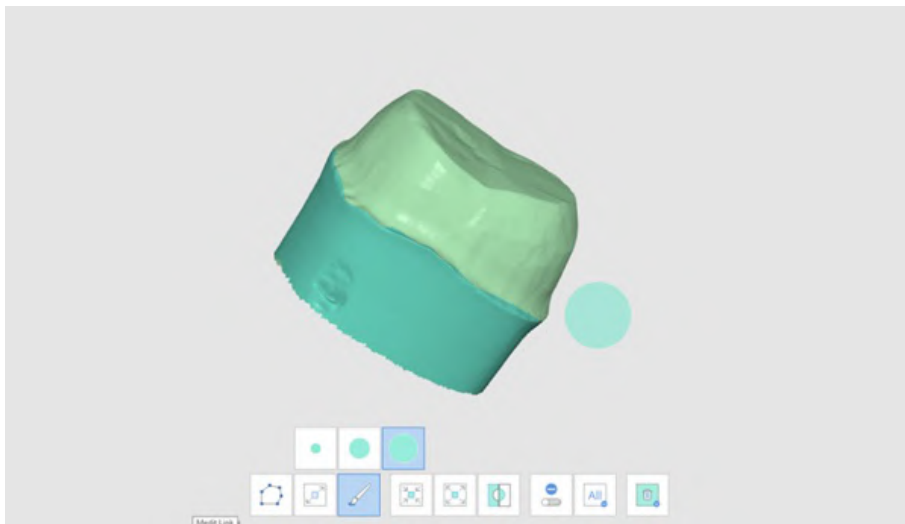


🔍 Observação


A ferramenta de recorte de polilinha seleciona todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela, enquanto a ferramenta de recorte por pincel seleciona apenas os dados faciais frontais.

2. É possível inverter, encolher ou expandir a seleção com as três ferramentas a seguir.


- Inverter a área selecionada

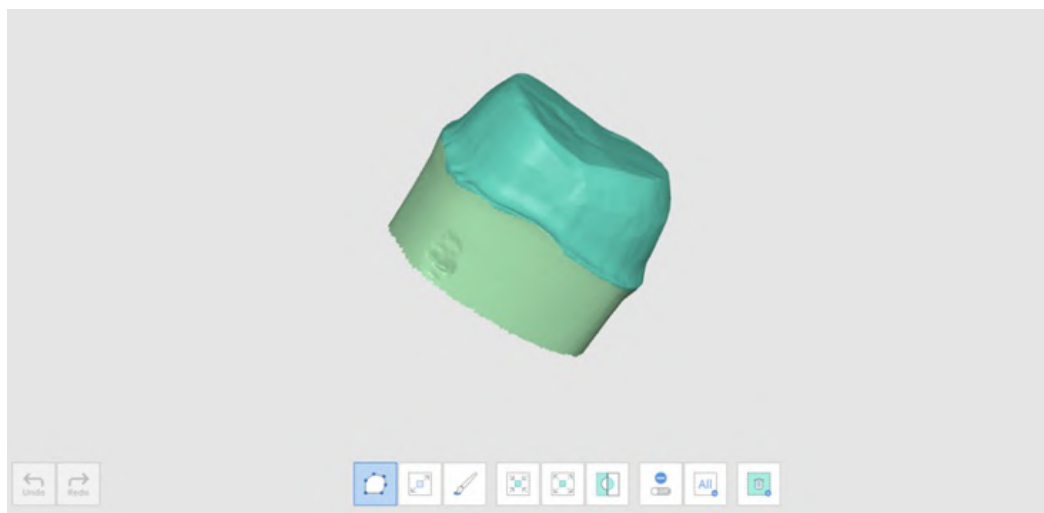

- Encolher a Área Seleccionada

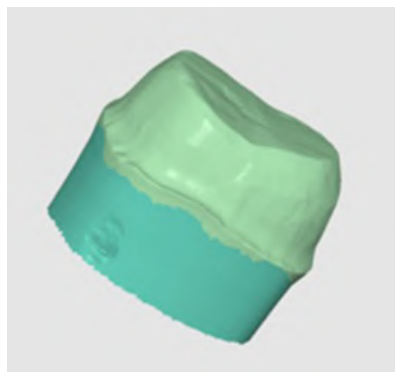


- Expandir a Área Seleccionada

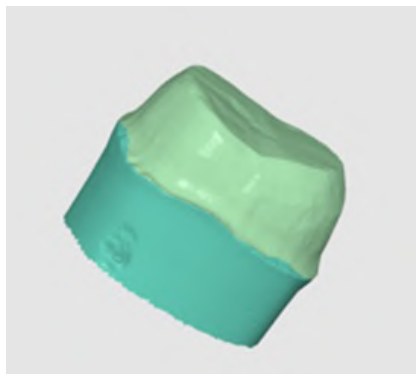





3. Você pode cancelar a seleção das áreas selecionadas com a ferramenta Excluir a área selecionada.

Otimizar alinhamento da oclusão

Otimize o alinhamento da oclusão. Você pode escolher os dados-alvo e ajustar o alinhamento da oclusão.

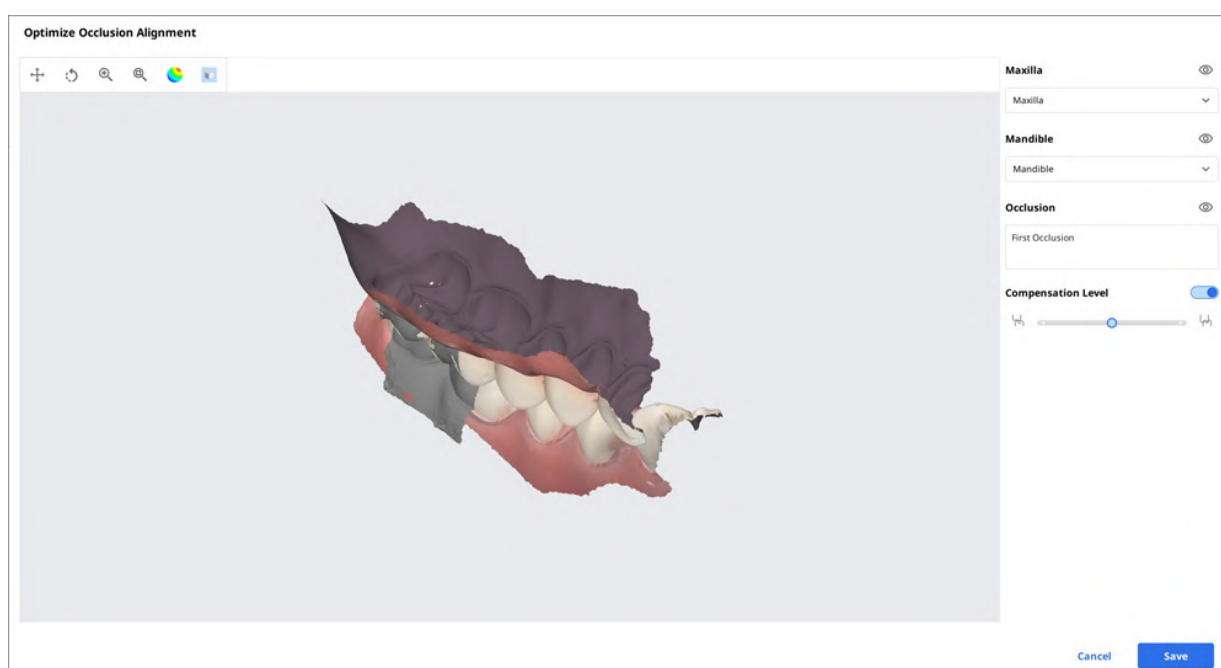


Nível de compensação

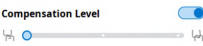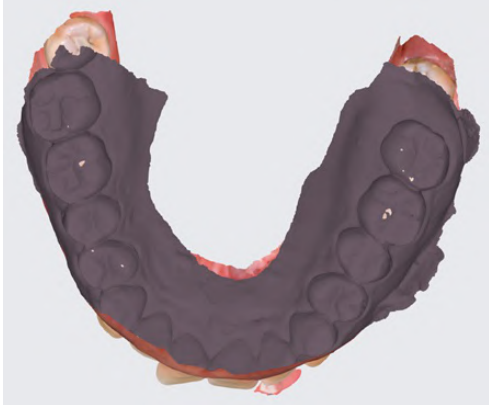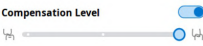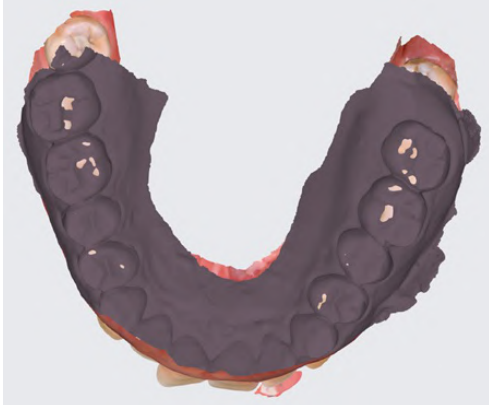Baixo	Compensation Level 	
Médio	Compensation Level 	
Alto	Compensation Level 	
Desligado	Compensation Level 	

Movimento mandibular

Você pode reproduzir os movimentos mandibulares gravados no Medit Scan for Clinics para ver os contatos de oclusão dinâmicos entre as dentições superior e inferior.

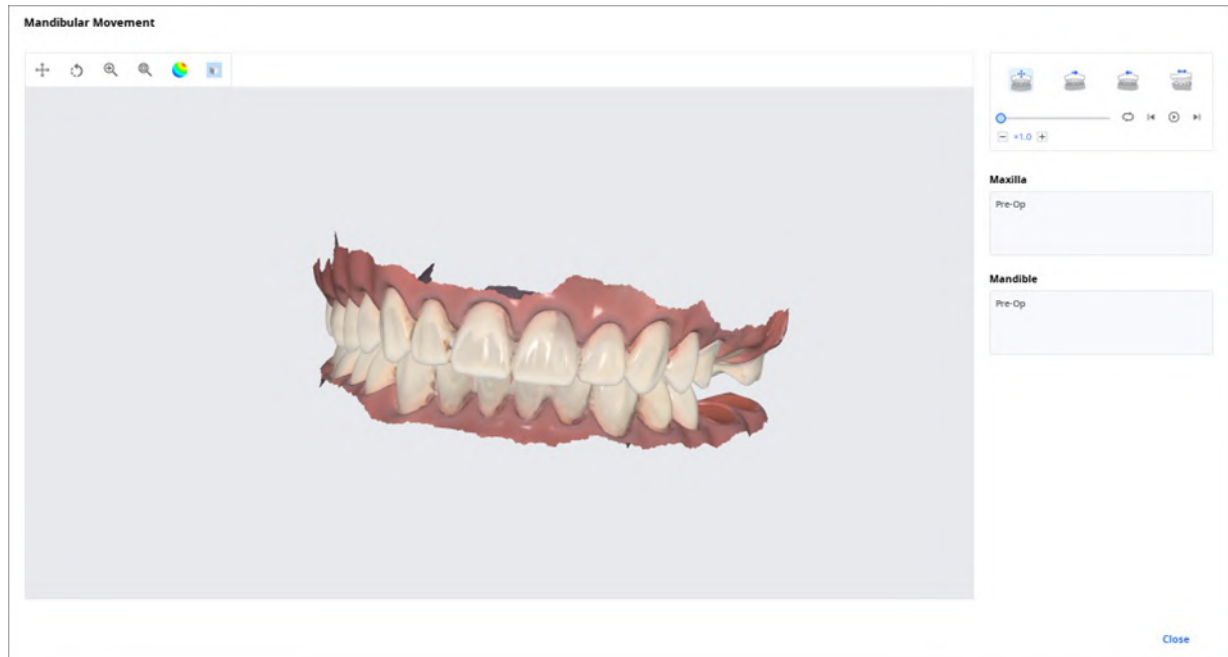

	Movimento livre	Reproduz a gravação do movimento mandibular livre.
	Movimento lateral esquerdo	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a esquerda.
	Movimento lateral direito	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a direita.
	Movimento protrusivo	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a frente.

Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos

Você pode obter vários resultados de dados de oclusão do aplicativo Medit Scan.

O Medit Link fornece a função de gerenciar os resultados por meio do "Visualizador de arquivos".

Como gerenciar vários resultados


Quando o usuário obtém vários resultados de oclusão do Medit Scan for Clinics, o Medit Link oferece a opção de selecionar um resultado.

A lista de resultados é ordenada por nome e você pode selecionar um item.

O modelo selecionado será exibido na "Árvore de dados" e na "Área de exibição do modelo".



Você pode recolher a lista e alterar o item usando os ícones de seta.

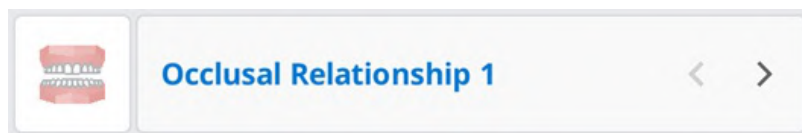

Opções de visualização

Você pode alterar as Opções de visualização para personalizar os layouts da lista de casos em Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtros do estado

Exibe ou oculta cada filtro que representa o estado do caso. Os filtros com estado oculto não são exibidos na tela da Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Fica fácil encontrar o caso que você precisa com os filtros do estado.

- Você pode clicar no estado que deseja visualizar para exibir apenas os casos nesse estado.
- É possível selecionar vários estados ao mesmo tempo.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de filtragem:

Caixa	Filtros do estado
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Itens da tabela

Selecione os itens a exibir na lista de casos em Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Você pode alterar a ordem dos itens da tabela ou ajustar a largura da coluna da tabela na visualização em lista para otimizar o ambiente do usuário.

Para cada caixa, estão disponíveis os seguintes itens de tabela:

Caixa	Itens da tabela
Patient	Nome do paciente / ID do paciente / Gênero / Número de casos / Data de registro / Data de nascimento
Case Box	Estado / Nome do caso / Data de nascimento / Informações do formulário / Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
Order Box	Estado / Nome do caso / Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório / Data de entrega solicitada / Modificado em
In Box	Estado / Nome do caso / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Modificado em / Nome da clínica
Work Box	Estado / Nome do caso / Nome do paciente / Informações do formulário / Modificado em / Data de entrega solicitada / Data de escaneamento / Nome da clínica / Data do pedido

Tipo de visualização

Altere o tipo de visualização de Visualização em galeria para Visualização em lista, e vice-versa, na Case Box.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de tipo de visualização:

Caixa	Opções de tipo de visualização
Patient	Visualização em lista
Case Box	Visualização em lista / Visualização em galeria
Order Box	Visualização em lista
In Box	Visualização em lista
Work Box	Visualização em lista

Agrupamento

Selecione uma opção de agrupamento para classificar e reorganizar os casos na lista pela opção selecionada.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de agrupamento:

Caixa	Opções de agrupamento
Case Box	Nenhum / Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido
Order Box	Nenhum / Data de escaneamento / Data do pedido / Data de entrega solicitada
In Box	Nenhum / Data do pedido / Data de entrega solicitada
Work Box	Nenhum / Data de entrega solicitada

Observação

As opções de agrupamento estão indisponíveis em Patient, Case Talk e Trash Box.

Ordenação

Selecione uma opção de ordenação para alterar a ordem dos casos na lista de acordo com a opção selecionada.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de ordenação:

Caixa	Agrupamento	Opções de ordenação
Patient	-	Nome do paciente / ID do paciente / Data de nascimento / Data de registro / Número de casos
Case Box	Nenhum	Nome do paciente / Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
	Nome do paciente	Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
	Data de escaneamento	Nome do paciente / Modificado em / Data do pedido / Nome do laboratório
	Data do pedido	Nome do paciente / Modificado em / Data de escaneamento / Nome do laboratório
Order Box	Nenhum	Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório
	Data de escaneamento	Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório
	Data do pedido	Nome do paciente / Data de escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
In Box	Nenhum	Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data do pedido	Nome do paciente / Data de escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Data do pedido / Nome da clínica
Work Box	Nenhum	Nome do paciente / Modificado em / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Modificado em / Nome da clínica


Observação

As opções de ordenação estão indisponíveis em Case Talk e Trash Box.

Filtragem e pesquisa

Filtrar por paciente

Filtre e exiba os casos por nome do paciente. É possível criar uma lista filtrando apenas os pacientes nos quais você precisa trabalhar.

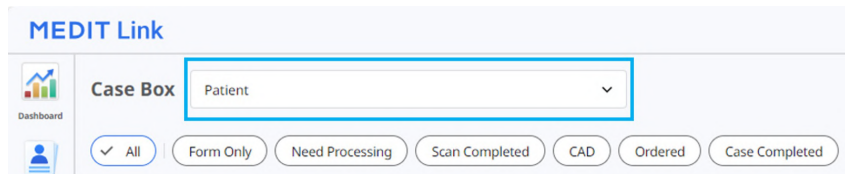


MEDIT Link

Case Box Patient

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Insira um nome de paciente.

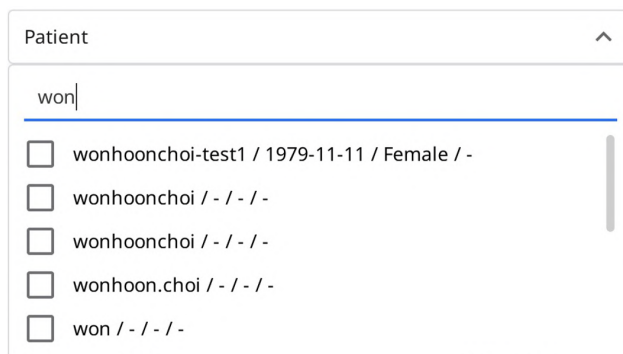


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selecione os pacientes entre os resultados da pesquisa abaixo.

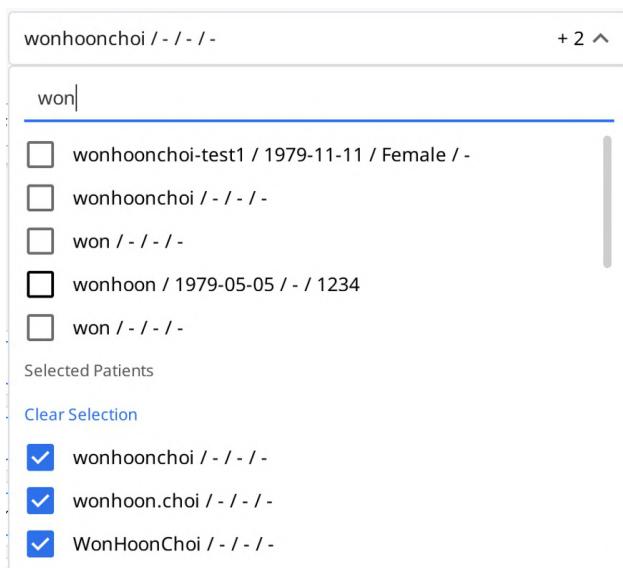

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. somente os casos dos pacientes selecionados são exibidos na lista.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrar por data

Filtre e exiba casos modificados pela última vez dentro da duração definida.

1. Clique no filtro de duração.




2. Selecione a duração na lista.

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados pela última vez dentro desse período.
- Hoje: Exibe os casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe os casos modificados pela última vez durante este mês.
- Mês anterior: Exibe os casos modificados pela última vez no último mês.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

Recursos avançados de pesquisa

Aproveite os recursos de pesquisa para encontrar rapidamente as informações que deseja.

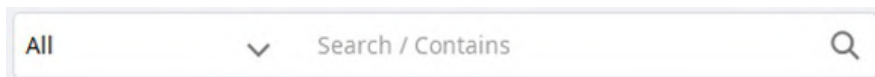

Os seguintes Critérios de pesquisa estão disponíveis para cada caixa:

Patient	Tudo, Nome do paciente, ID do paciente
Case Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Informações do formulário, Nome do laboratório
Order Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório, ID do pedido
In Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido
Work Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Informações do formulário, Nome da clínica, ID do pedido
Case Talk	Nome do Case Talk (Contém), Nome do paciente (Igual a)
Trash Box (Clinic)	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome do laboratório, Excluído por
Trash Box (Lab)	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, Excluído por

É possível selecionar os Critérios de pesquisa e escolher entre as lógicas Contém ou Igual a.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Criar/Editar/Clonar/Excluir caso

Criar casos

Criar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Insira informações básicas, como o nome do paciente e o nome do caso.
 - Se você inserir um nome que não esteja na lista de pacientes, um novo paciente será adicionado.
 - Se você inserir um nome que está na lista de pacientes, poderá selecioná-lo nela.
 - Se registrar um caso para um paciente existente, clique no ícone Lista de pacientes para selecionar um paciente existente.
 - Na caixa de diálogo Lista de pacientes, você pode registrar um novo paciente ou editar as informações de um paciente existente.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	8888				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.

4. Clique em "Registrar e escanear" para concluir o registro do caso e proceder com o escaneamento.
 - **Registrar:** Você será redirecionado para a página principal. Isso é útil ao registrar vários casos.
 - **Registrar e escanear:** Acesse a guia Formulário para registrar as informações do formulário do caso.

Criar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name*:** A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name*:** A text input field.
- Case Name*:** A text input field.
- Requested Delivery Date:** A date picker showing "2023-04-13".
- Tag:** A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer:** A note stating "You can add up to 10 tags of 100 characters or less." and two buttons: "Cancel" and "Register".

2. Insira ou selecione o nome da clínica.
3. Insira o nome do paciente e o nome do caso. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.
4. Informe a data de entrega estimada considerando a data de conclusão do trabalho.
5. Após registrar o caso, você será redirecionado para a página principal.

Editar casos

Editar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Clique no ícone "Pesquisar" para alterar o nome do paciente. Observe que ele não pode ser editado diretamente. Em vez disso, você pode encontrar um nome de paciente pelo qual gostaria de substituir o atual e editar as informações do paciente na lista.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Verifique o nome do paciente pelo qual você gostaria de substituir o atual.
4. Para criar um paciente, pressione o botão "Novo paciente".
5. Use o botão "Editar" para alterar as informações registradas sobre o paciente.
6. Clique em "Aplicar" para terminar o processo.

Editar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clique em "Aplica" depois de concluir a edição.

Observação

Você não pode editar as informações dos casos recebidos por meio do pedido na In Box.

Clonar casos

Clonar caso na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Será perguntado o tipo de informação que você gostaria de clonar para o novo caso.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Escolha se deseja replicar apenas as informações do formulário ou todos os dados.
4. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".

Clonar caso na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Duplique todos os dados para criar um caso.
3. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".


Excluir caso

Excluir caso (Clínica e Laboratório)

1. Clique no ícone "Excluir".



2. Clique em "OK" para excluir o caso.

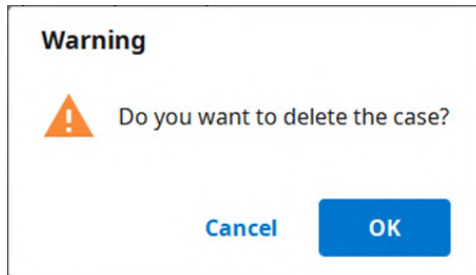

3. Os casos excluídos são movidos para a Trash Box e podem ser recuperados, se necessário.

Informações do formulário

Você pode inserir as informações do formulário com base no programa conectado e no tipo de tratamento.

As informações inseridas serão usadas como informações básicas para trabalhar em programas de escaneamento ou CAD e ao fazer pedidos.

Registrar informações do formulário na Case Box

Inserir na guia Formulário

1. Selecione se deseja inserir informações de tratamento por dente ou por arcada.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
3. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

Registrar informações do formulário na Work Box

Inserir na guia Formulário

1. Selecione o programa de escaneamento que deseja usar.
2. Selecione uma das seguintes opções que definirão sua estratégia de escaneamento: Dentes/Multitroquel flexível/Multitroquel.
3. Os métodos podem ser diferentes dependendo do programa de escaneamento selecionado.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dentes	☐	☐
Arcada	☐	☐
Multitroquel flexível	☒	☐
Multitroquel	☒	☐

4. Selecione números de dentes, arcada ou troquel para o processo de escaneamento.
5. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
6. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

Conectar dentes à ponte

Você pode conectar vários dentes em uma ponte quando o mesmo material é aplicado a vários dentes adjacentes. Clique no ícone da ponte ao lado dos dentes selecionados para conectá-los ou desconectá-los.



Definição das opções de escaneamento

Dependendo do programa com o qual você está trabalhando, várias opções de escaneamento são fornecidas.

As opções de escaneamento selecionadas são repassadas para cada programa de escaneamento.

Medit Scan for Labs

Opções gerais

	Dentes adjacentes	Marca os dentes preparados e adjacentes e repassa essa informação para o programa de escaneamento.
	Antagonista	Marca automaticamente o antagonista e passa a informação para o programa de escaneamento.
	Articulador	Exibe as opções para selecionar o articulador no programa de escaneamento.
	Marcador de movimento	Permite utilizar a estratégia de escaneamento "Movimento da mandíbula" no programa de escaneamento.

Opções por dente

	Scan body	Permite definir uma estratégia para escanear scan bodies no programa de escaneamento.
	Escaneamento pré-operatório	Permite definir uma estratégia para escanear um modelo pré-operatório no programa de escaneamento.
	Escaneamento do encerramento	Permite definir uma estratégia para escanear enceramentos no programa de escaneamento.

Adicionar aos favoritos

Você pode selecionar rapidamente um produto registrando-o como favorito.

A lista de favoritos registrados é gerenciada como um template e pode ser compartilhada por meio dos recursos de exportação e importação.

Adicionar aos favoritos

1. Selecione o número do dente.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Tipo – Método – Material – Tonalidades podem ser registrados como favoritos mesmo que nem todos estejam selecionados.
3. Clique no ícone de "Estrela".

4. Uma combinação dos parâmetros selecionados, excluindo o número do dente, aparece em sua lista de pesquisa de favoritos.

Gerenciar templates favoritos

Você pode registrar, gerenciar e compartilhar diferentes tipos de templates.

Adicionar	Adiciona um novo template.
Mudar o nome	Muda o nome do template atual.
Excluir	Exclui o template atual.
Exportar	Exporta o template atual para um arquivo.
Importar	Importa um arquivo de template.

Trabalhar em escaneamento/CAD

Processo de escaneamento

Com base nas informações inseridas, prossiga com o escaneamento.

1. Insira/salve as informações do tratamento e selecione as opções de escaneamento necessárias.
2. Clique no botão "Escanear" no canto superior direito da janela.

Processo de CAD

O Medit Link fornece o aplicativo de integração DentalCAD para conectar o Medit Link com o DentalCAD.

1. Instale o aplicativo DentalCAD Integration na App Box.
2. Acesse os detalhes do caso e clique no ícone do aplicativo DentalCAD Integration no Inicializador rápido.
3. Especifique o caminho para o aplicativo DentalCAD instalado no seu PC na caixa de diálogo pop-up.
4. Insira os detalhes do caso escaneado e clique no ícone do aplicativo DentalCAD Integration. Será aberta uma caixa de diálogo para criar um arquivo dentalProject.
5. Registre as informações do formulário do DentalCAD e clique em "Abrir" para abrir o programa CAD.
6. Se você instalar o aplicativo de integração DentalDB Integration, os resultados do CAD serão entregues automaticamente no caminho de salvamento especificado no exocad. (Apenas contas de laboratórios)


Utilização de aplicativos complementares

Complemento Inicializador rápido

Você pode executar diretamente vários aplicativos complementares clicando nos ícones dos aplicativos instalados no Inicializador rápido. Você pode alterar a ordem dos ícones dos aplicativos arrastando-os.



Gerenciamento do inicializador de aplicativos

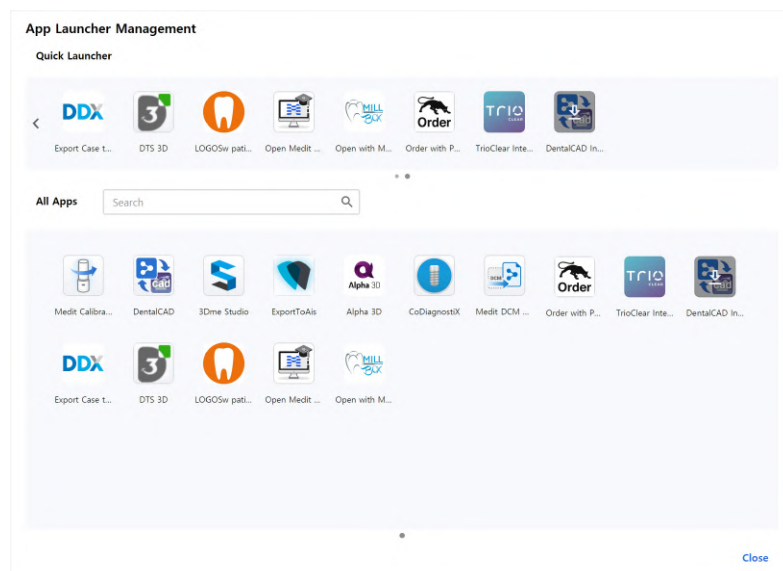

Inicializador rápido

Você pode definir quais aplicativos aparecem no Inicializador rápido. Você pode alterar a ordem dos ícones dos aplicativos arrastando-os ou pode criar pastas para agrupar aplicativos semelhantes e organizá-los.

Todos os apps

São mostrados todos os aplicativos que você instalou. Você pode clicar com o botão direito no ícone de um aplicativo para adicioná-lo ao Inicializador rápido. Ao clicar com o botão direito no menu de contexto, você também pode selecionar se deseja executar, instalar ou desinstalar o aplicativo.

Obter arquivos de resultados

Exportar arquivos de resultados de escaneamento

Além de compartilhar resultados com parceiros por meio de pedidos, o Medit Link permite que você armazene seus arquivos de resultados no formato de arquivo desejado usando a função de exportação.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

Exportar arquivos para	Especifique o caminho onde deseja armazenar os arquivos de resultados.
Nome da pasta	O sistema cria uma nova pasta e armazena todos os arquivos de resultados nela. O nome da pasta padrão é definido pela regra de nomenclatura. Mas é possível alterar o nome da pasta diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome da pasta.
Nome do arquivo	Define o nome do arquivo para o resultado. A regra de nomenclatura define o nome de arquivo padrão. Mas é possível alterar o nome do arquivo diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome do arquivo.
Tipo	Escolha o programa de design que deseja usar. O Medit Link ajustará automaticamente os arquivos de acordo com sua seleção, permitindo prosseguir com o design sem a necessidade de alinhamento adicional de eixo.
Formato da malha	Especifica o formato do arquivo de malha.
Formato da imagem	Especifique o formato dos arquivos de imagem exportados.
Comprimir arquivos	Comprime todos os resultados em um único arquivo.
Combinar malha individual	Combina o resultado de maxila ou mandíbula com o dente individual. Isso é útil quando não é possível importar vários arquivos para um programa.
Exportar todas as relações oclusais	Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode exportar todos esses resultados de uma só vez.
Salvar informações do caso como PDF	Salva as informações sobre o caso como PDF com o resultado.

Exportar arquivos de resultados da lista de casos

É possível exportar arquivos de resultados de um caso ou de vários casos simultaneamente com a opção "Exportar" acima da lista de casos na Case Box e na Work Box.

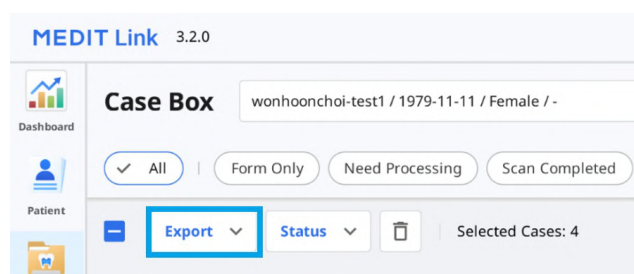

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Selecione na lista todos os casos dos quais deseja exportar arquivos de resultados.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 ☐ **Status** ▾ |
 ☐ **Selected Cases: 4**

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. Clique em "Exportar" e selecione "Arquivos de resultados".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Defina a pasta de destino, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit ▾

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF


Close **Export**

Observação

Os campos "Nome da pasta" e "Nome do arquivo" não são editáveis ao exportar arquivos para vários casos.


O nome da pasta e o nome do arquivo são criados automaticamente de acordo com as regras que você definiu para as opções "Regra para nome das pastas" e "Regra para nome dos arquivos" em Configurações > Opções de exportação.

5. Clique em "Exportar".
6. Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

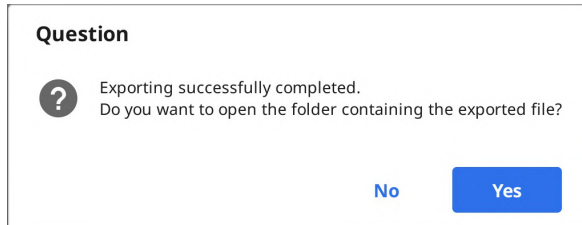

Exportar arquivos de resultados do Visualizador de arquivos

Você pode exportar arquivos de resultados de escaneamento para um caso com o ícone "Exportar" no canto superior direito da guia Visualizador de arquivos.

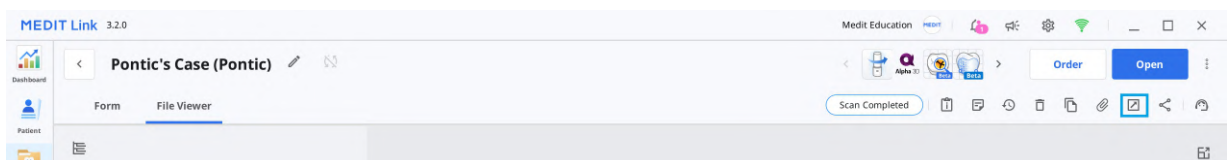

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Clique em um caso da lista para abri-lo.
3. Clique no ícone "Exportar" no canto superior direito da guia Visualizador de arquivos.



4. Defina a pasta de destino, o nome da pasta, o nome do arquivo, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. Na guia "Lista de arquivos", você pode selecionar os arquivos necessários para o caso desmarcando os desnecessários.

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]

☒ [Icon] Maxilla
☒ Base

☒ [Icon] Mandible
☒ Base

☒ [Icon] Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒ [Icon] Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible

☒ [Icon] Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export

6. Clique em "Exportar".
7. Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes


Exportar arquivos de resultados da árvore de dados

Você pode exportar um ou mais arquivos em um grupo de dados específico no menu expandido do Visualizador de arquivos.

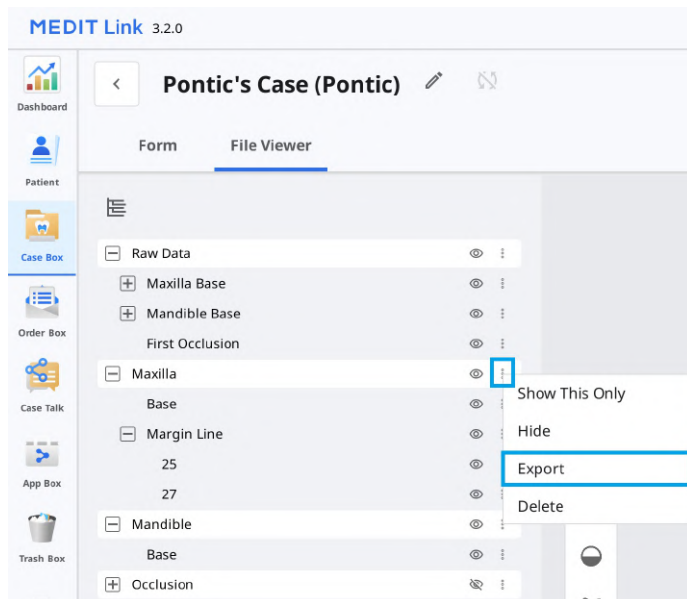

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Clique em um caso da lista para abri-lo.
3. Clique no ícone de três pontos ao lado do grupo de dados ou de uma entidade na árvore de dados da guia Visualizador de arquivos.

4. Depois, clique em "Exportar".

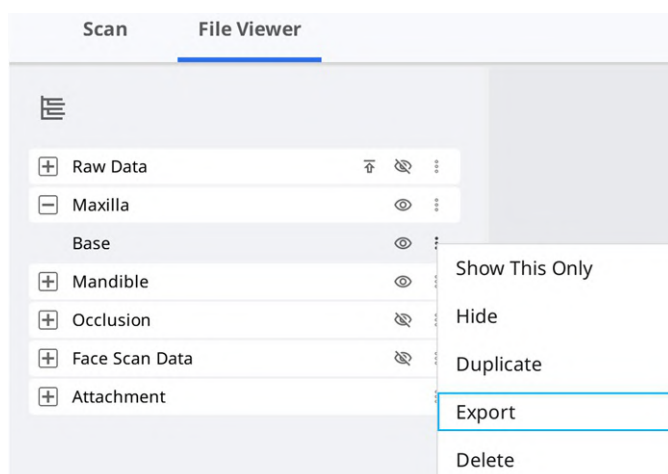

5. Defina a pasta de destino, o nome da pasta, o nome do arquivo, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Você pode ver que apenas os arquivos escolhidos na árvore de dados estão selecionados na Lista de arquivos.

Export Files in This Case

Options File List

☒ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Clique em "Exportar".
8. Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Exportar a lista de casos como CSV


O Medit Link fornece a função para exportar a lista de casos para o formato CSV.

Você pode exportar a lista de casos com informações básicas e gerenciar casos facilmente.

1. Acesse Case Box, Order Box, In Box ou Work Box.
2. Selecione os casos que deseja exportar.

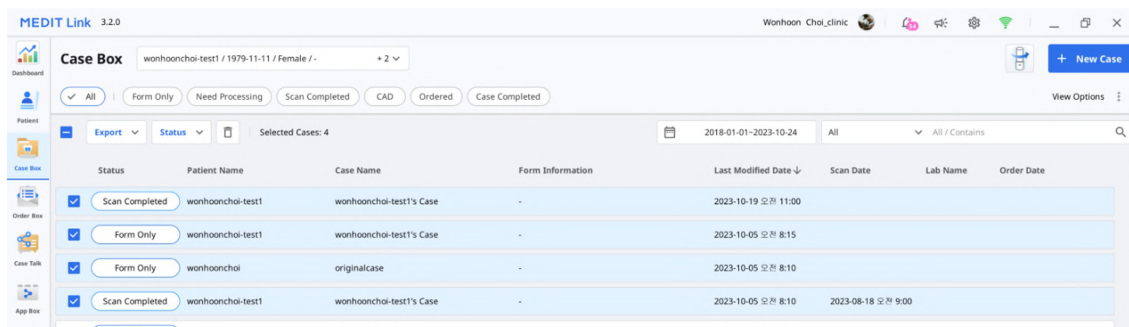

3. Clique em "Exportar" e selecione "Lista de casos (conforme exibidos)" ou "Lista de casos (com todos os itens)".

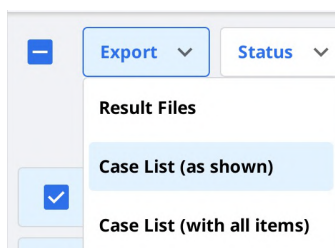

Observação

Lista de casos (conforme exibidos): exporte a lista de casos com os itens exibidos atualmente na tela. Acesse Opções de visualização > Itens da tabela para mostrar ou ocultar os itens conforme desejado.
Lista de casos (com todos os itens): exporte a lista de casos com todos os itens, incluindo Estado, Nome do caso, Data de nascimento, Informações do formulário, Modificado em, Data de escaneamento, Data do pedido e Nome do laboratório.

4. Defina o caminho e o nome do arquivo e, então, salve a lista.
5. A lista de casos é salva como arquivo CSV.


Exportar a linha de margem

O Medit Scan for Clinics fornece uma função para criar a linha de margem, e o Medit Link pode transferir a linha de margem para o programa CAD.

Exportar a linha de margem como uma cor

Em geral, o Medit Link converte a linha de margem em cor e exporta o resultado com maxila ou mandíbula juntas. Você pode criar a linha de margem em seu CAD fazendo referência às informações de cores.

Exemplo:

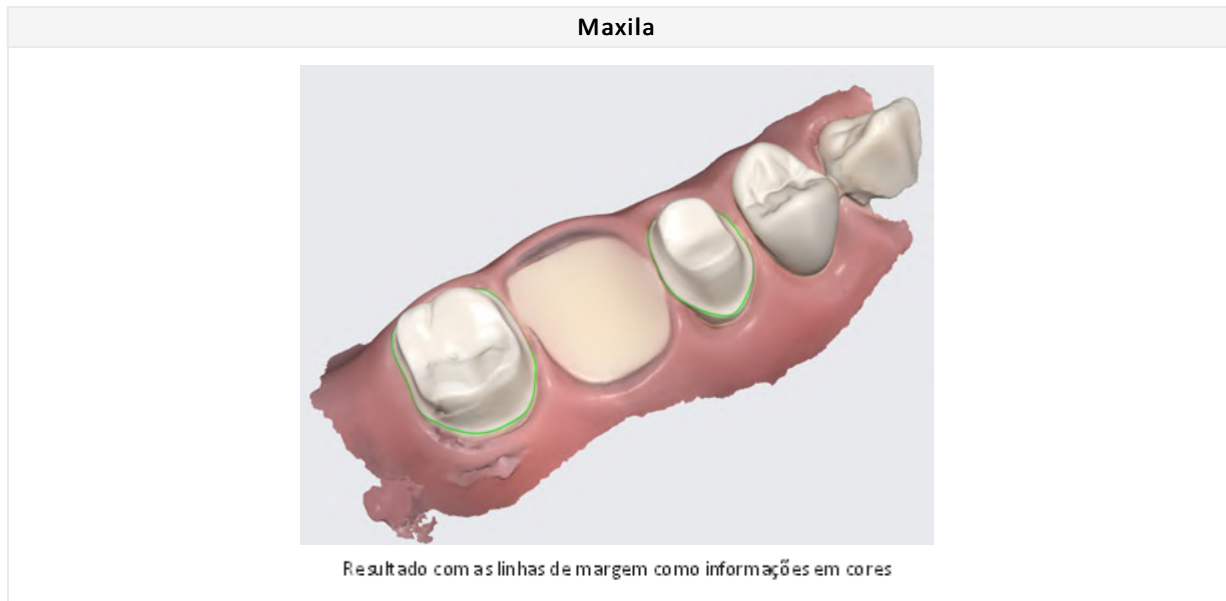

Observação

Essa funcionalidade está disponível para formatos que incluem informações de cores, como meditMesh, OBJ e PLY. A linha de margem não é convertida em STL.

Observação


Tipo > 3Shape não oferece suporte a essa funcionalidade.

Exportar a linha de margem como um arquivo

No caso do exocad, o Medit Link exporta a linha de margem para "~margin.xyz" que pode ser importado diretamente para o exocad.

Você pode usar esse arquivo no exocad sem trabalho adicional.

Exemplo:

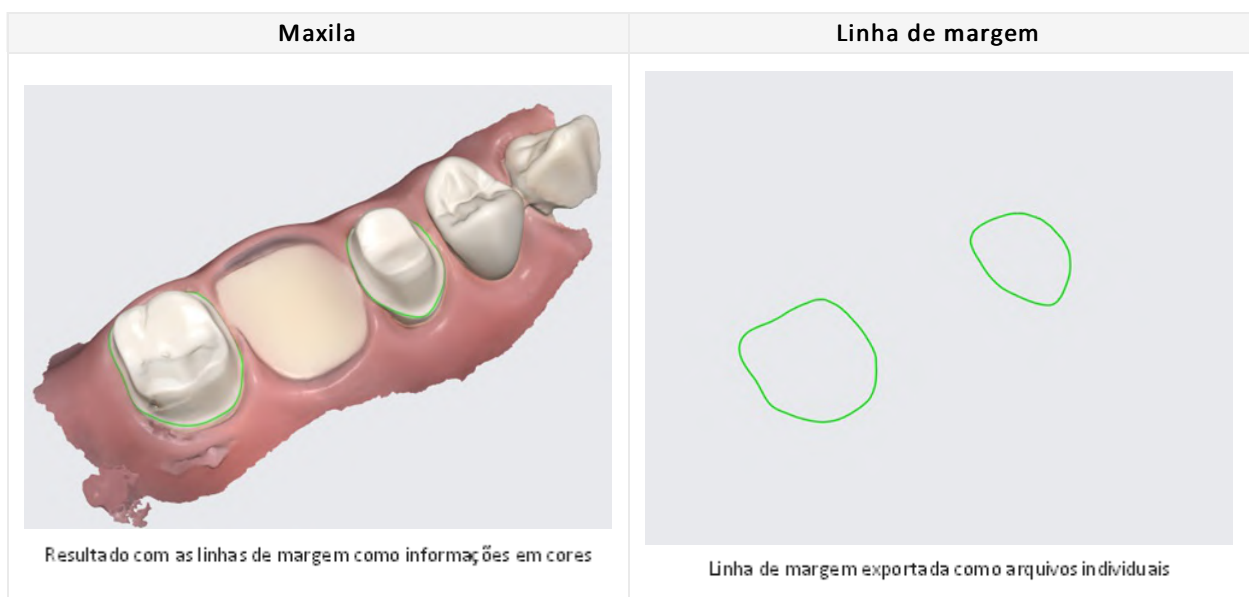

Download de arquivos do Medit Link Web

O Medit Link fornece uma função de download.

Se você deseja obter os arquivos de resultados sem instalar o aplicativo Medit Link, pode baixá-los do serviço da web Medit Link.

Observação


Os dados devem ser transferidos por upload no Medit Cloud para fazer o download dos arquivos da web.

A função de download está disponível no menu a seguir do serviço da web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Você encontra o botão "Download" no canto superior direito.

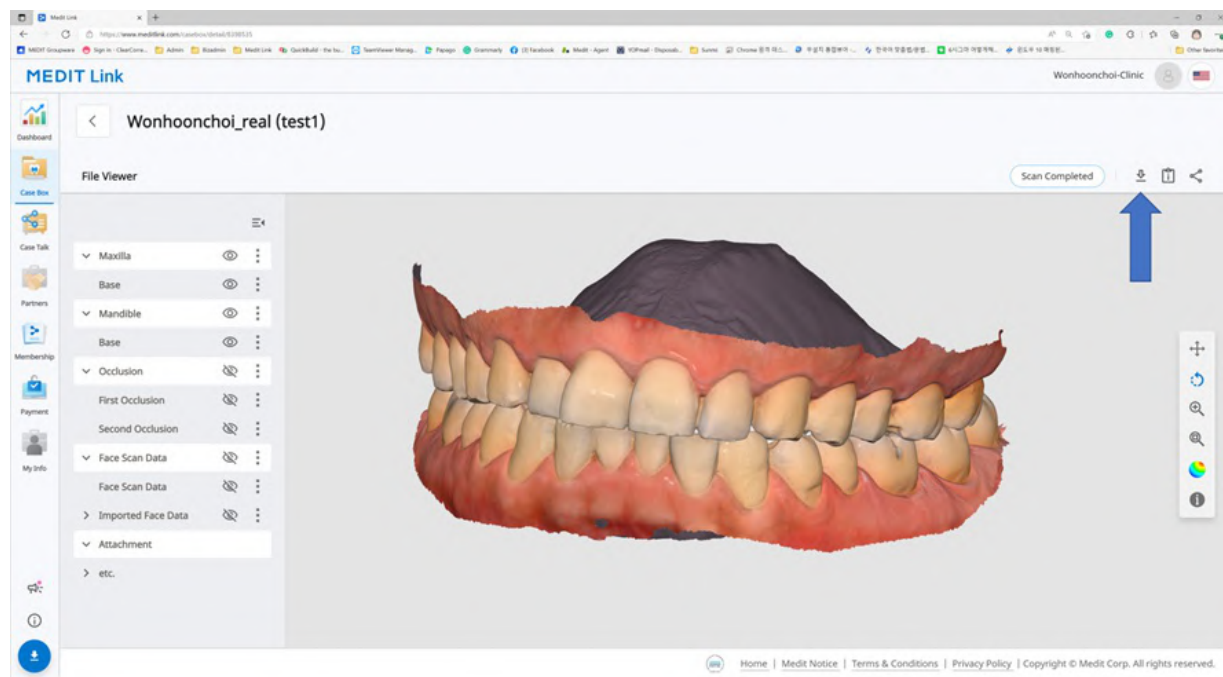

Web Viewer

Ao compartilhar o caso usando o Case Talk, você pode definir se deseja permitir o download ou não.

Se você marcar “Conceder permissão de download” e compartilhar o caso, todos os usuários que se conectarem pelo link compartilhado poderão fazer o download dos arquivos.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

No Web Viewer, você encontra o ícone "Download" no canto superior direito.

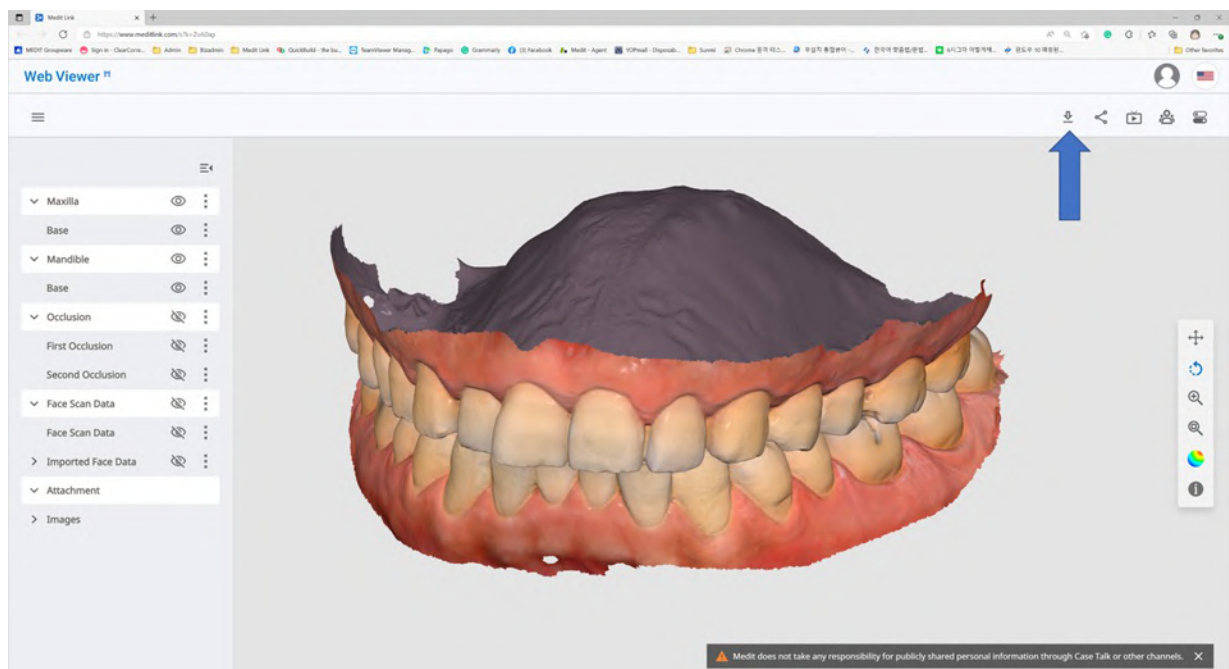

1. Clique em "Download".



2. Selecione o formato de malha na caixa de diálogo de download.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Depois, clique em "OK".

Pedir/gerenciar pedidos

Você pode fazer facilmente o pedido de um caso com dados adquiridos de programas conectados e anexados pelo usuário.

Pedidos de casos

Você pode fazer um pedido para seus parceiros na Case Box.

1. Clique no botão "Pedido".
2. Verifique as informações necessárias para o seu pedido.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
8:15 AM

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Selecione um parceiro.
4. Verifique as informações do produto na guia Lista de pedidos.
 - Você pode decidir se deseja compartilhar o nome do paciente.
5. Verifique os arquivos a serem pedidos na guia Lista de arquivos.
6. Insira a data de entrega desejada.
 - O valor padrão é definido como 7 dias após a data do pedido.
7. Você pode adicionar notas e etiquetas para o seu parceiro a fim de descrever detalhes específicos.
8. Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode enviar todos esses resultados de uma só vez marcando "Pedir todas as relações oclusais".
9. Continue com o seu pedido.

Confirmar pedido (In Box)

- Aceite o pedido ao recebê-lo.
- Os pedidos aceitos serão encaminhados à Work Box.

Cancelar pedido (Order Box)

- É possível cancelar um pedido antes que o seu parceiro o aceite.
- Casos cancelados podem ser pedidos novamente.

Rejeitar pedido (In Box)

- Você pode rejeitar um pedido recebido.
- Casos rejeitados podem ser pedidos novamente.

Verificação de casos pedidos

Você pode verificar os detalhes do caso que pediu na Order Box da conta da clínica. Você também pode verificar o caso que recebeu na In Box da conta de laboratório.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informações de encomenda	As informações que podem ser incluídas no pedido são as seguintes: ID do pedido/nome do paciente/nome da conta/data de escaneamento/data do pedido/data de entrega/data de vencimento da entrega/nota. Você pode verificar os detalhes do produto solicitado e as informações de entrega.
Lista de pedidos	A lista de pedidos exibe os detalhes do produto pedido.
Envio	Insira/verifique as informações de remessa.

Inserir informações de envio (In Box)

Insira as informações de envio do caso concluído e inicie o envio.

1. Clique na guia Envio.
2. Insira as informações de envio e clique em "Registrar".

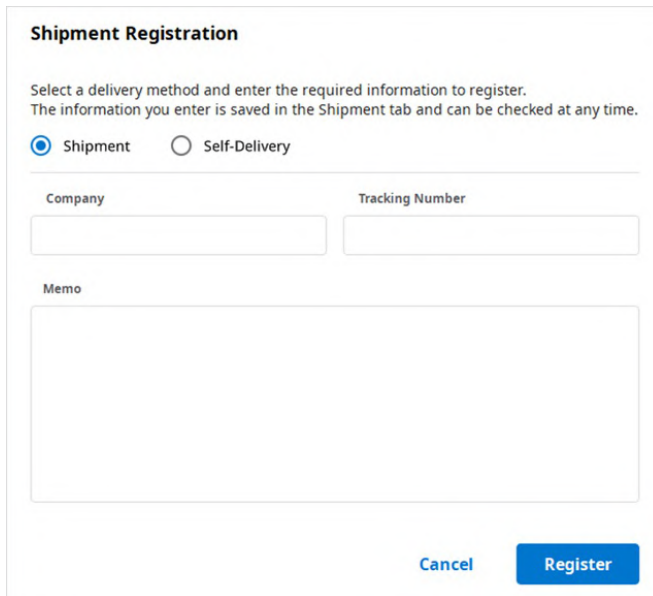

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. As informações inseridas são enviadas ao seu parceiro.

Gerenciamento da data de entrega

Você pode definir a data esperada de entrega ao fazer um pedido, e essa informação será encaminhada ao seu parceiro.

Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica)

- Ao fazer pedidos na Case Box, você pode inserir a data de entrega solicitada.

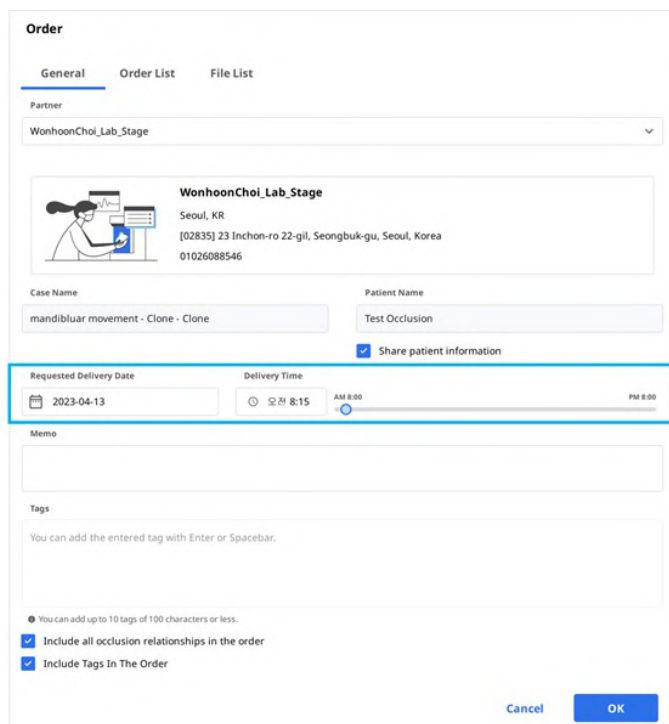

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- O valor padrão é 7 dias após a data do pedido.
- Insira a data/hora em que deseja receber os produtos e prossiga com o pedido.
- Você pode definir a hora facilmente usando a barra deslizante.

Configuração da data de entrega estimada (conta de laboratório)

- Você pode inserir a data de entrega esperada para o caso pedido a partir da In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 07:56 Order Date: 2022-09-29 08:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01 (Edit icon)

07:10:30 07:10:30

Memo: <Scanbody Library> 16: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 15: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 14: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Verifique a data de entrega solicitada com o parceiro e a remarque usando o botão "Editar".



2. Insira a data de entrega estimada levando em conta o dia útil real. Se necessário, você também pode deixar um comentário.
3. Clique em "Aplicar".

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time: 11:45 AM (Slider from AM 8:00 to PM 8:00)

Comment

Cancel Apply

4. A data de entrega estimada e a nota serão encaminhadas juntamente com o pedido.
 - Você pode verificar a data e as notas na Order Box.
 - Você pode alterar a data de entrega esperada, e as alterações serão encaminhadas ao seu parceiro.
5. É possível verificar o histórico do caso usando o botão "Histórico".



Concluir caso

Concluir (Work Box/In Box)


Depois que todas as tarefas estiverem concluídas, clique em "Concluído" para concluir o caso.

Concluir um caso nos detalhes dele

O ícone de três pontos fica à direita do botão "Abrir" ou "Escanear novamente".



Conclua o trabalho clicando no ícone e selecionando "Done".

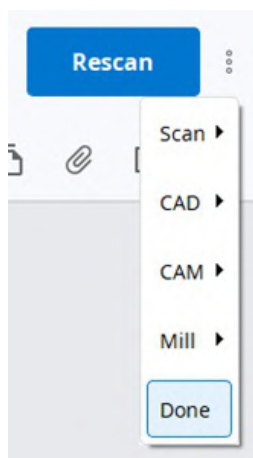

Concluir vários casos na lista de casos

1. Acesse a Work Box.
2. Selecione todos os casos a concluir.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Clique em "Estado" e selecione "Done".

Concluir (Case Box/Order Box)

Após a conclusão do caso no laboratório, a clínica precisa confirmar o caso para concluir todo o processo do pedido.

A clínica poderá encontrar o botão "Confirmar entrega" na Order Box se o laboratório concluir seu trabalho.


Clique nela para que todo o processo do pedido seja concluído e o estado do caso, alterado para "Case Completed".

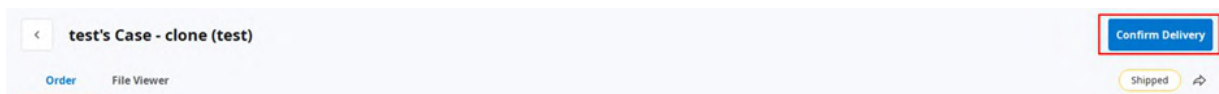

Concluir um caso sem pedido na Case Box

Para casos que não são pedidos ao laboratório, você pode concluí-los a partir da Case Box.

1. Acesse a Case Box.
2. Selecione o caso que deseja concluir.

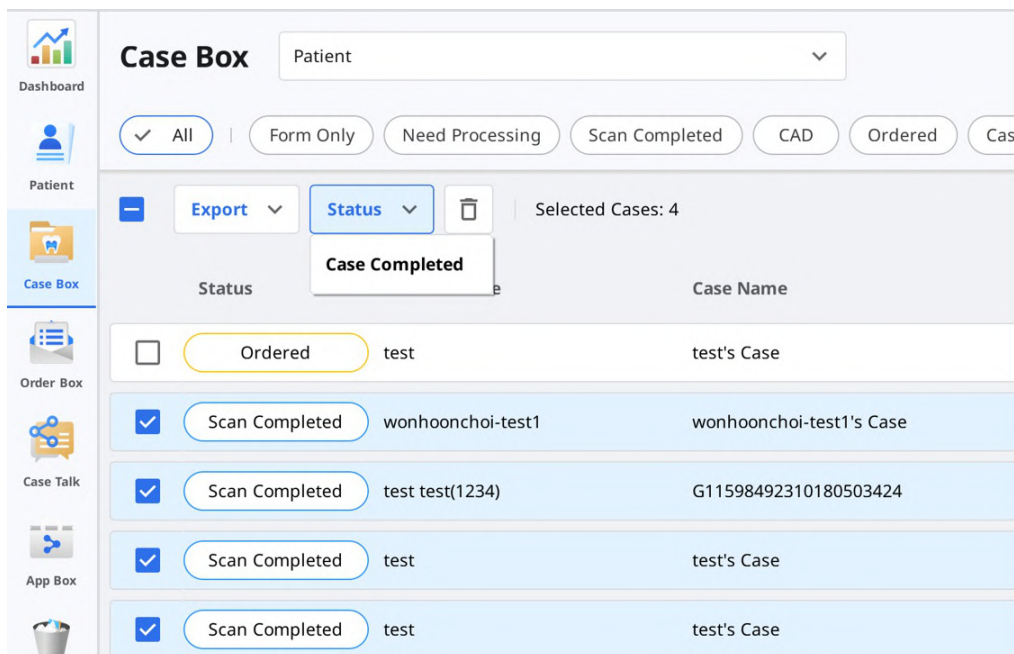

3. Clique em "Estado" e selecione "Case Completed".

Comunicar usando etiquetas

Você pode incluir informações adicionais para o seu caso usando etiquetas e enviá-las aos seus parceiros.

Adicionar etiquetas ao criar um caso

Você pode inserir etiquetas ao criar um caso ou editar informações do caso.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

É fácil pesquisar e selecionar etiquetas que você usou antes.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Adicionar etiquetas ao fazer pedido

Você pode verificar e editar etiquetas na caixa de diálogo Pedido ao fazer pedidos.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Verificar etiquetas em detalhes do caso

MEDIT Link 3.2.0

Order Open

Scan Completed

Form File Viewer

Case Box

- Raw Data
- Maxilla
- Base
- Mandible
- Base
- Occlusion

Case Talk

App Box

Trash Box

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name × Worker_Name ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z