

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

소개	7
Medit Link	7
서비스 개요	7
클라우드 서비스	8
주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리	8

Medit Link > 설치

시스템 요구 사양	9
Windows 시스템 요구 사항	9
macOS 시스템 요구 사항	9
Medit Link Web 시스템 요구 사양	9
웹 브라우저 권장 사양	9
모바일 기기 최소 사양	9
Windows 설치	10
macOS 설치	13

Medit Link > 시작하기 전에

회원가입 및 로그인	17
Medit Link 웹사이트	17
회원가입	17
로그인 및 기본 정보 입력	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
Dashboard 개요	21
Medit Insights	21
Medit Insights 구독	22
Medit Insight 이메일 수신 해제하기	23
Patient	24
환자 검색	24
Case Box/Work Box	25
케이스 필터링	25
환자 검색을 통한 필터링	25
상태를 이용한 필터링	26
기간 설정을 이용한 필터링	27
검색 기능을 이용한 필터링	27
케이스 상세 정보	27
Order Box/In Box	29
주문 탭	29
Order Box/In Box에서 제공하는 탭	29
Case Talk	30
Case Talk 생성하기	30
공유 범위 및 권한 설정	31
Case Talk 상세	32
Web Viewer	33
주석	34
코멘트	35

실시간 화면 공유	36
데이터 트리	36
데이터 트리 메뉴	36
3D 모델 조정	37
Partners	38
파트너 검색	38
내 파트너 목록	38
파트너 초대	39
Membership	40
멤버십	40
Plan	40
클라우드 저장소	41
멤버십 구독하기	41
멤버십 구독 취소하기	43
결제 정보	44
결제 방법 추가	45
결제 방법 변경	46
리딩 코드	47
리딩 코드 등록 및 활성화하기	47
리딩 코드 활성화하기	48
My Info	49
내 정보	49
내 치과/내 기공소 (관리자 계정만 해당)	49
내 스캐너	50
기타 메뉴	51
공지사항 및 업데이트	51
관련 웹사이트	51
프로그램 다운로드	51

Medit Link > Medit Link App

화면 구성	53
아래 표에서 치과 및 기공소 계정의 유형 및 권한에 따라 사용할 수 있는 메뉴를 확인할 수 있습니다.	53
타이틀 바	54
내 정보	54
알림	54
공지사항 및 업데이트	55
설정	55
네트워크 상태	56
설정	58
일반	58
저장소 관리	59
기간 설정	59
컴퓨터 저장 공간	59
클라우드 저장소	59
연결 프로그램 설정	60
내보내기 옵션	60
케이스 변환 도구	62
케이스 내보내기	62
케이스 가져오기	63
프록시 옵션	65
제품 정보	65
유저 가이드	65
메뉴	67

Dashboard	67
Patient	67
새 환자 추가	68
환자 삭제	68
환자 병합	68
Case Box/Work Box	69
Case Box/Work Box에서 제공하는 탭	69
Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능	70
Order Box/In Box	71
Order Box/In Box에서 제공하는 탭	71
Case Talk	71
App Box	72
전체	72
Medit Apps	72
다운로드	73
Trash Box	73
케이스 동기화 매니저	73
업로드	74
다운로드	74
관련 웹사이트	75
파일 뷰어	76
데이터 트리	76
모델 조정 도구	76
3D 모델 조정	76
2D 이미지 조정	77
기능 도구	78
캡처 & 메모	78
교정용 캡처	78
빈 영역 채우기	79
잘라내기	79
교합 정렬 최적화	82
하악 운동	83
복수의 교합 결과 관리	84
복수의 교합 결과 관리하는 방법	84
보기 옵션	86
상태 필터	86
목록 유형	87
그룹화 방법	87
정렬 방법	87
필터링 및 검색	89
환자 검색을 통한 필터링	89
기간 설정을 통한 필터링	90
고급 검색 기능을 이용한 필터링	90

Medit Link > 작업 순서

케이스 생성/편집/복제/삭제	92
케이스 생성	92
Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)	92
Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)	93
케이스 정보 편집	93
Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)	93
Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정)	94
케이스 복제	95

Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)	95
Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)	95
케이스 삭제	96
케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)	96
폼 정보	97
Case Box에서 치식 정보 입력	97
폼 탭에서 치식 정보 입력	97
Work Box에서 치식 정보 입력	97
폼 탭에서 치식 정보 입력	97
브릿지 설정	97
스캔 옵션 설정	98
Medit Scan for Labs	98
일반 옵션	98
치아 별 적용 옵션	98
상품 즐겨 찾기 등록 및 활용	98
즐거찾기 추가	98
즐거 찾기 관리	99
스캔 및 CAD 작업	100
스캔 작업 진행	100
CAD 작업 진행	100
애드인 앱 활용	100
앤드인 쿼 런처	100
앱 런처 관리	100
쿼 런처	101
모든 앱	101
결과 파일 얻기	102
결과 파일 내보내기	102
케이스 목록에서 결과 파일 내보내기	103
파일 뷰어에서 결과 파일 내보내기	104
데이터 트리에서 결과 파일 내보내기	106
케이스 리스트를 CSV로 내보내기	108
마진 라인 내보내기	109
색상 정보로서 마진라인 내보내기	109
파일로서 마진 라인 내보내기	109
Medit Link Web 에서 파일 다운로드 하기	110
Case Box/Work Box	110
Web Viewer	111
주문 및 주문 관리	113
주문	113
주문 수락 (In Box)	113
주문 취소 (Order Box)	114
주문 거절 (In Box)	114
주문 케이스 확인	114
배송 정보 입력 및 배송 (In Box)	114
배송 예정 날짜/배송 희망 날짜 관리	115
배송 희망 날짜 입력 (치과 계정)	115
배송 예정 날짜 입력(기공소 계정)	115
케이스 완료하기	116
주문 과정 완료 (Work Box/In Box)	117
케이스 상세정보에서 완료하기	117
케이스 리스트에서 여러 개의 주문 완료하기	117
주문 과정 완료 (Case Box/Order Box)	117
주문하지 않은 케이스를 “Case Completed” 상태로 변경하기	118

태그를 이용한 커뮤니케이션	119
케이스 생성/수정 시 태그 입력	119
주문 시 태그 입력	120
케이스 상세 화면에서 태그 확인	120

소개

Medit Link

Medit Link는 치과와 기공소 사이의 커뮤니케이션을 도와주는 협업 툴로 각 업무 환경에 최적화된 워크 플로우를 제공합니다.

각 계정의 형태 및 권한에 따라 특화된 기능을 제공합니다. 구강 스캐너, 모델 스캐너를 사용한 스캔 작업, 스캔한 결과물을 주문하고 기공물을 디자인하고 생산하는 과정을 관리할 수 있는 사용자 친화적인 UI를 제공합니다.

Medit Link는 컴퓨터에 설치하는 프로그램(앱)과 함께 웹에서 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다.

서비스 개요

		Web	App
		- 회원 가입 및 관리 - 파트너 검색 및 관리 - Web Viewer를 이용한 케이스 공유 - 앱에서 생성한 케이스 확인 - 주문 관리	- 품 정보 등록 - 스캔 - 주문 관리 - CAD 연동 - 환자 관리
치과	관리자	파트너 검색 및 관리, 내 치과 관리, 케이스 공유 - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	품 정보 입력, 스캔, 주문, 환자 관리 - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box
기공소	관리자	파트너 검색 및 관리, 내 기공소 관리, 케이스 공유 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	품 정보 등록, 스캔, 주문하기 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Member	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

클라우드 서비스

Amazon AWS를 통해 데이터의 자동 업로드/다운로드를 지원합니다.

클라우드에 저장된 정보를 활용해 동일한 조직에 소속된 다수의 사용자가 서로 다른 컴퓨터에서 동일한 환경으로 작업할 수 있습니다. 클라우드 기반의 백업 및 복구 기능을 제공합니다. 갑작스러운 컴퓨터의 고장으로 데이터가 손실되는 경우에도 클라우드에 저장된 데이터를 기반으로 복구가 가능하여 사용자 데이터를 안전하게 보호합니다.

파트너십을 맺은 치과와 기공소는 **Medit Link**의 클라우드 서버를 통해 빠르고 간편하게 데이터를 공유할 수 있어, 이메일로 데이터를 공유하던 기존 방식의 번거로움을 최소화해줍니다. 환자 정보와 관련된 모든 데이터는 안전하게 암호화되어 저장 및 전송됩니다. **Medit**는 의료법과 HIPAA 규정 및 GDPR 규정을 준수합니다

주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리

Medit Link 자체 주문 시스템을 제공합니다.

- 치과와 기공소 사이에 파트너십을 맺어 데이터를 빠르고 간편하게 공유할 수 있습니다.
- 주문 상태를 확인/관리할 수 있습니다.

시스템 요구 사양

참고

스캔 소프트웨어와 스캐너를 사용하는 경우에는 Medit Scan for Clinics와 Medit Scan for Labs의 시스템 요구 사항을 확인하시기 바랍니다.

Windows 시스템 요구 사항

	노트북 및 데스크톱
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz 이상
RAM	16 GB or 이상
Graphics	NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB 이상 및 동급의 AMD 그래픽 카드
OS	Windows 10 64-bit 이상 (32-bit 사용 불가)

macOS 시스템 요구 사항

	Mac
Processor	M1 with 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB 이상
OS	Monterey 12 이상

Medit Link Web 시스템 요구 사양

웹 브라우저 권장 사양

	브라우저
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


모바일 기기 최소 사양

	Android	iOS
Device	Galaxy S7 스펙 동급 이상	iPhone 7 스펙 동급 이상
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB 이상	2 GB 이상
AP	Snapdragon 710 이상	A10 Fusion


Windows 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 Medit Scan for Clinics and Medit Scan for Labs와 함께 설치됩니다.


1. Medit_LinkSetup.exe를 실행합니다.
2. 사용할 언어를 선택하고 “다음”을 클릭합니다.
3. 프로그램을 설치할 폴더를 지정합니다. “사용권 계약 조건”을 읽고 동의한 뒤 “설치” 버튼을 클릭합니다.

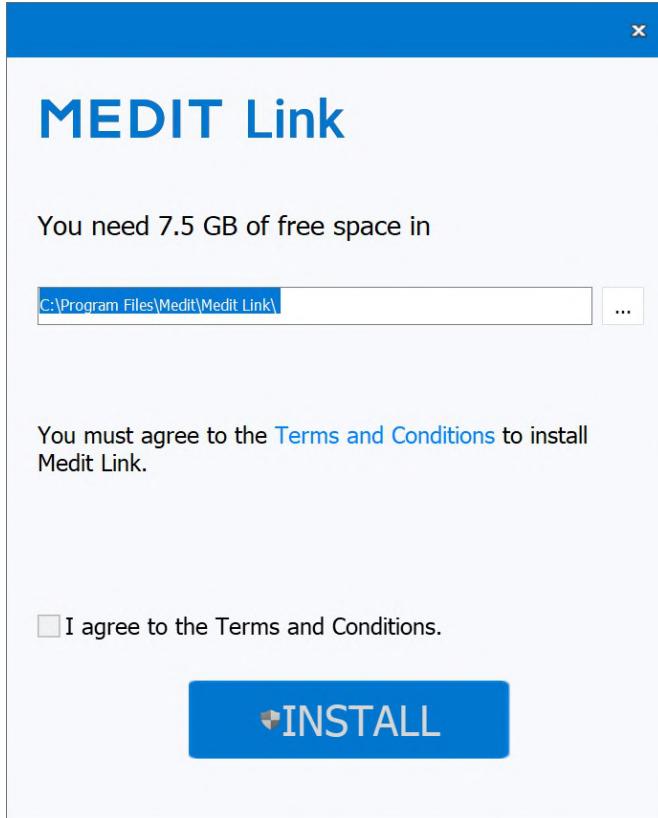

4. 설치가 진행되기 전에 컴퓨터와 스캐너가 분리되어 있는지 확인합니다. 스캐너가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 설치가 정상적으로 진행되지 않을 수 있습니다.
5. 프로그램 설치가 자동으로 진행되며 이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료될 때까지 컴퓨터의 전원을 끄지 말고 기다려 주세요.

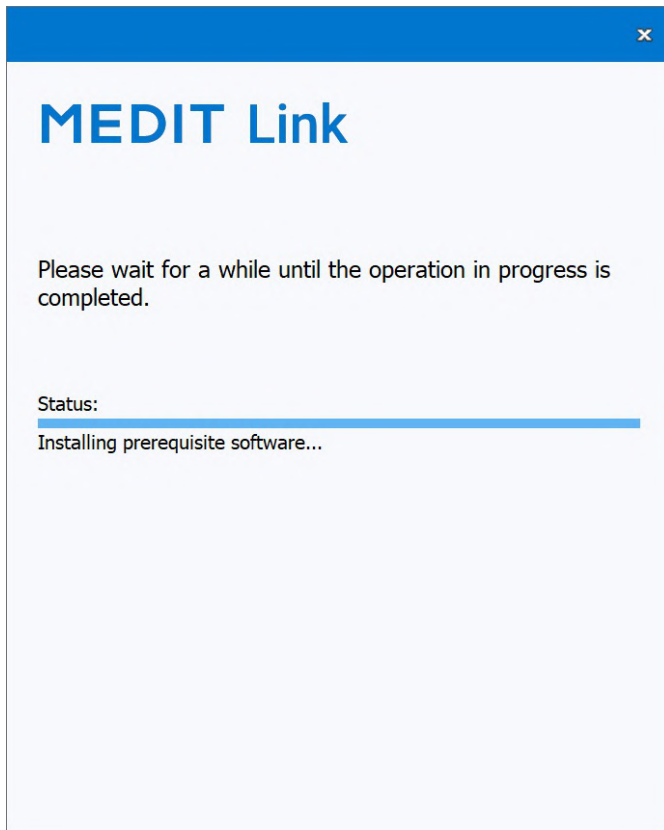

6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다. 스캐너를 사용하지 않는 경우에는 이 단계를 생략할 수 있습니다.

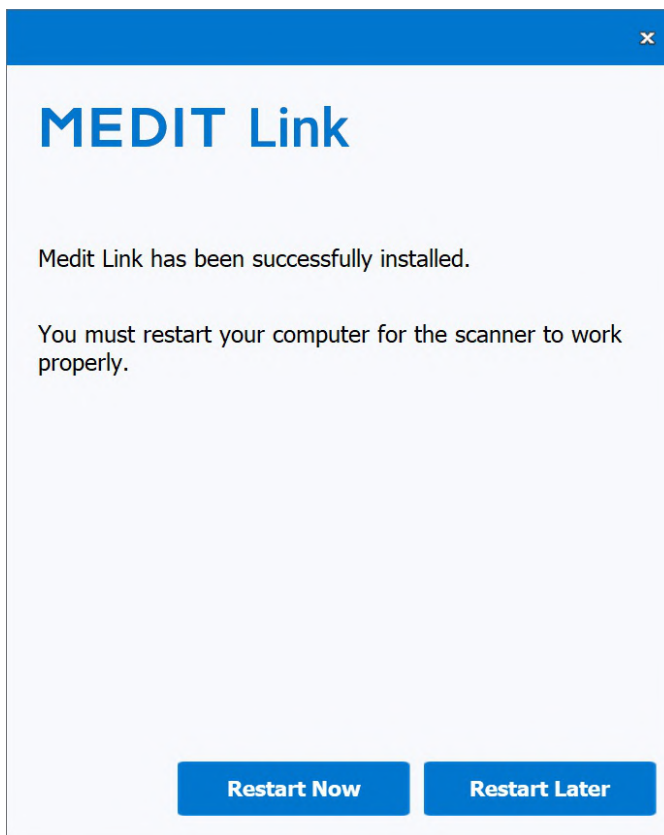


참고

설치 완료 후 컴퓨터를 재시작하지 않으면 스캐너가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


macOS 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 Medit Scan for Clinics와 함께 설치됩니다.


1. Medit_Link_x.x.x.pkg를 실행하고 "계속"을 클릭합니다.

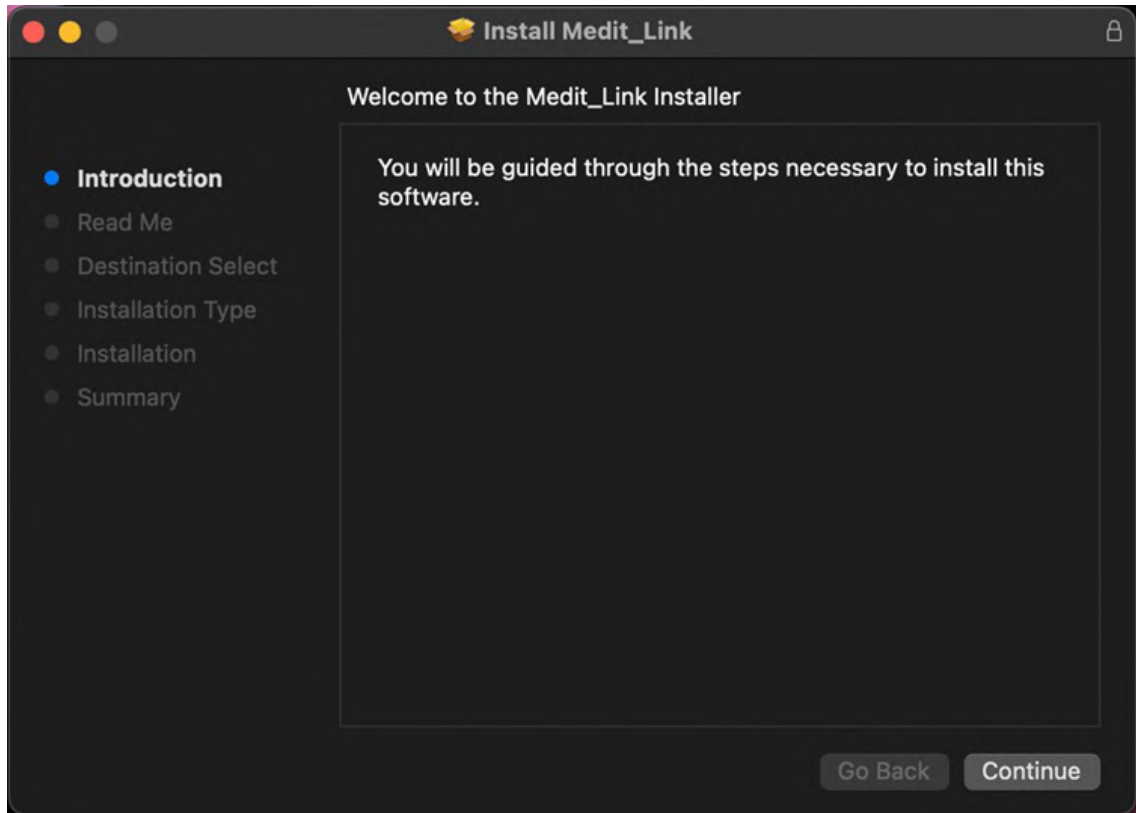


2. 최종 사용자 라이선스 계약을 읽고 "계속"을 클릭합니다.

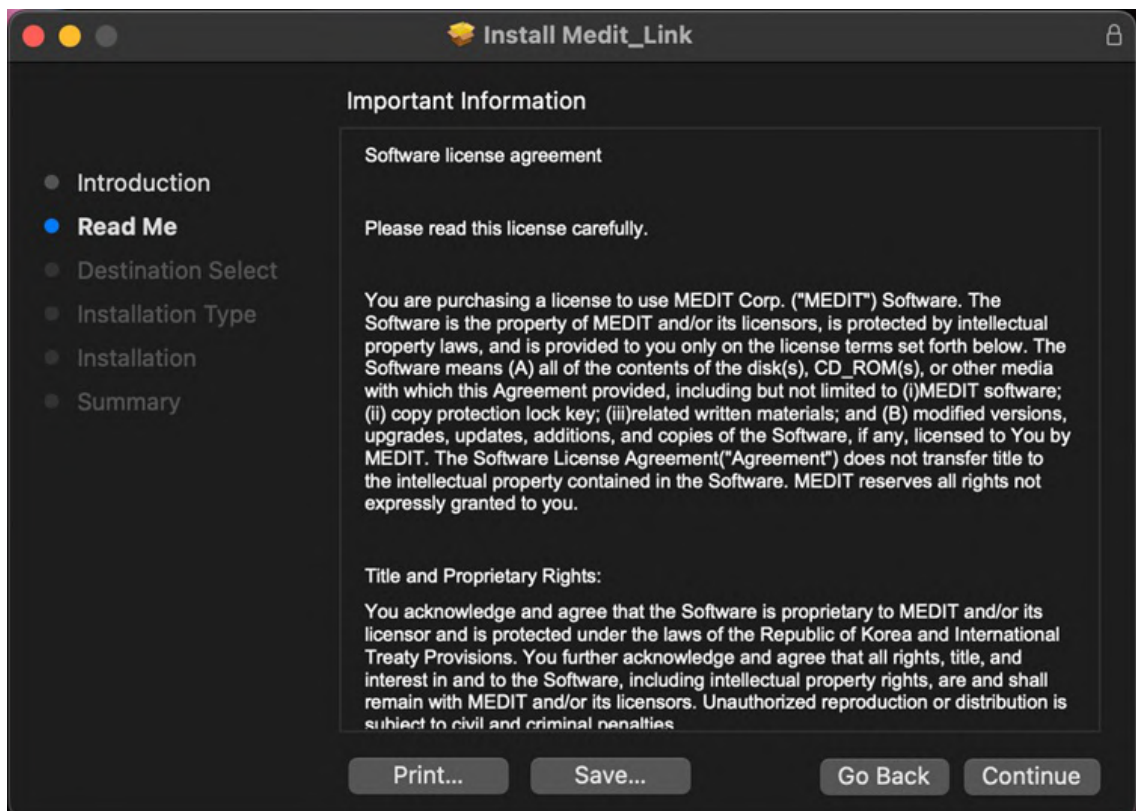

3. 설치할 디스크를 선택한 후 "계속"을 클릭합니다.

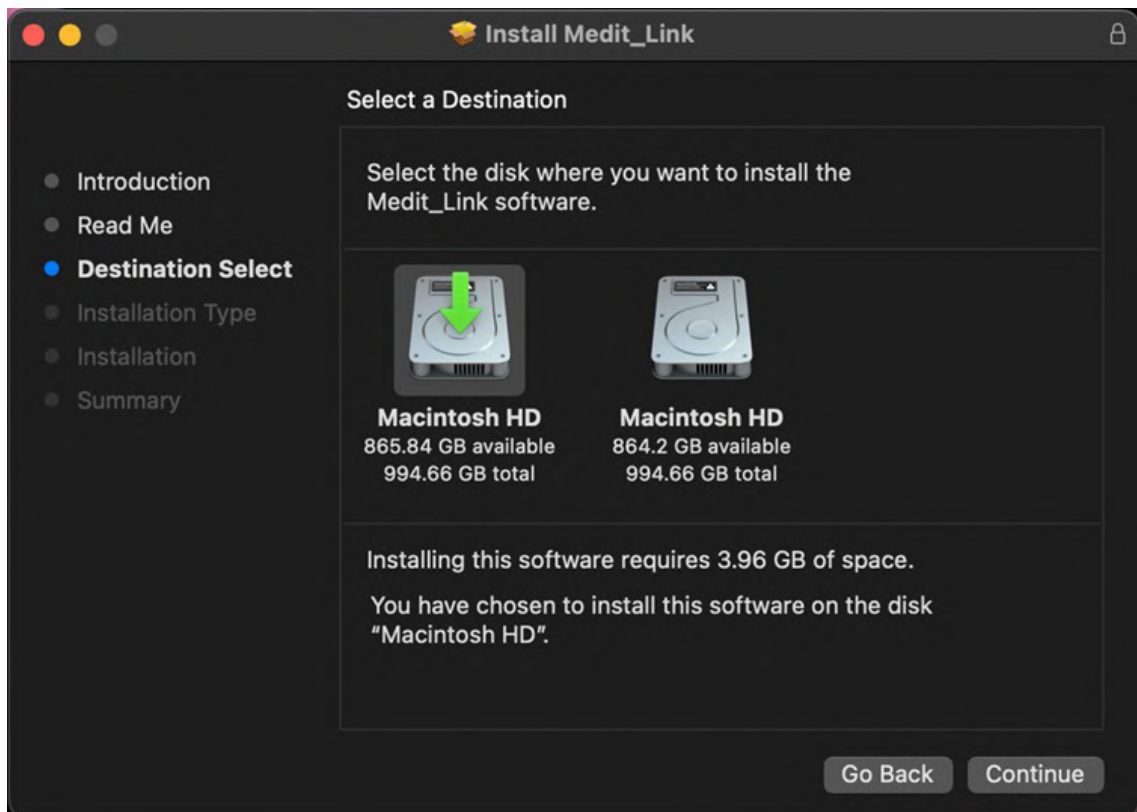


4. "설치 위치 변경..."을 클릭해서 설치 경로를 변경한 후 "설치"를 클릭합니다.

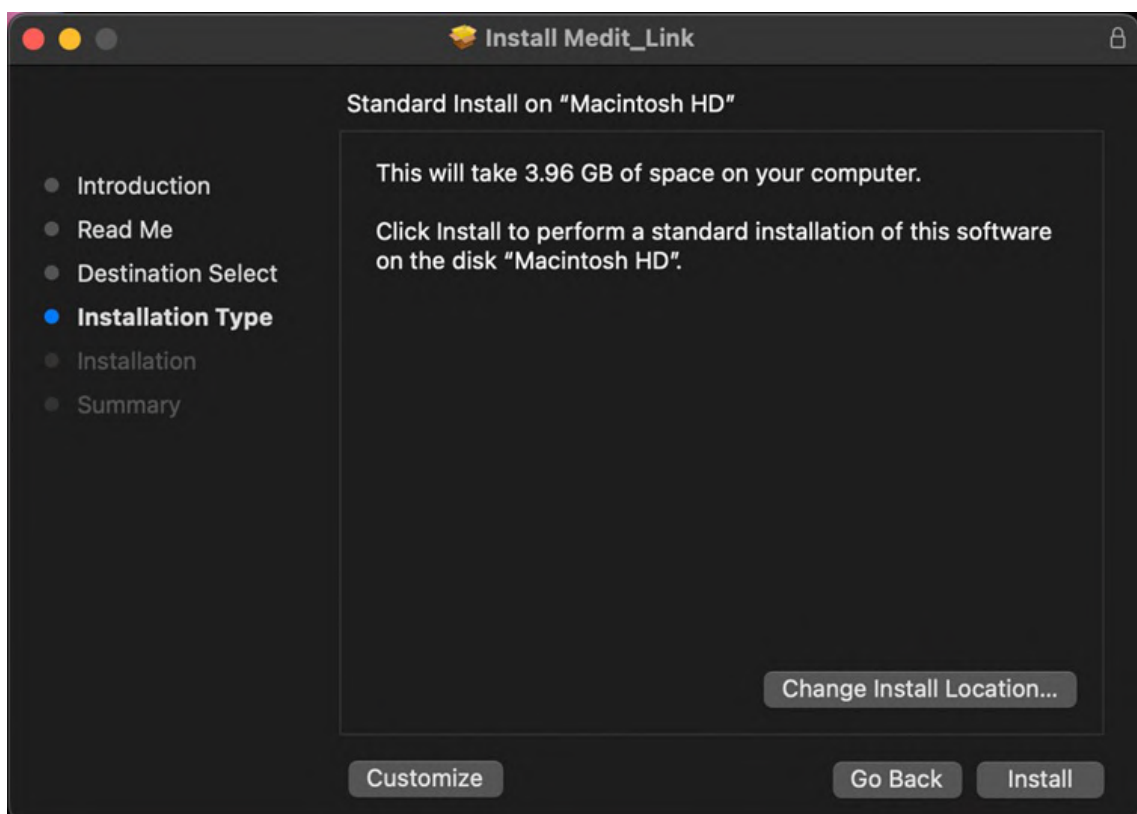


5. 아래의 창이 발생하면 지문 또는 Mac 로그인 비밀번호를 입력하여 설치를 허용합니다.



6. 설치가 완료될 때까지 기다리세요.

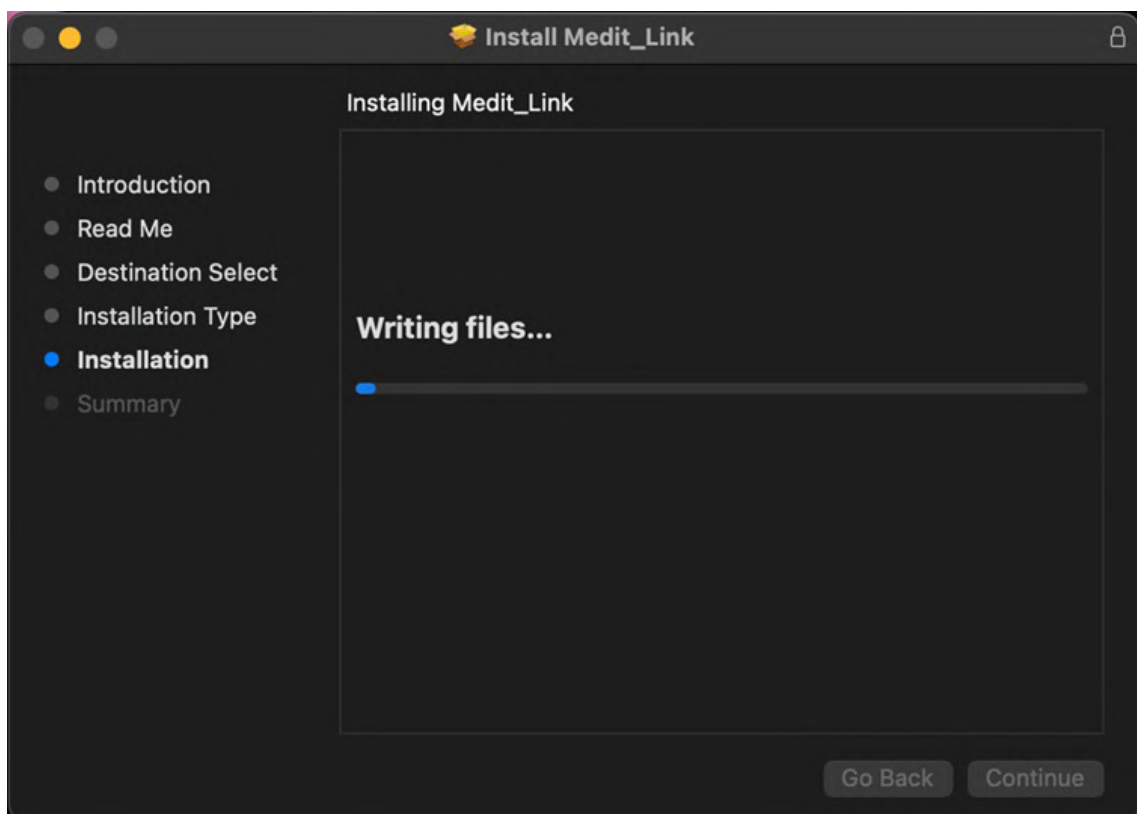


7. "닫기"를 클릭하여 설치를 종료합니다.

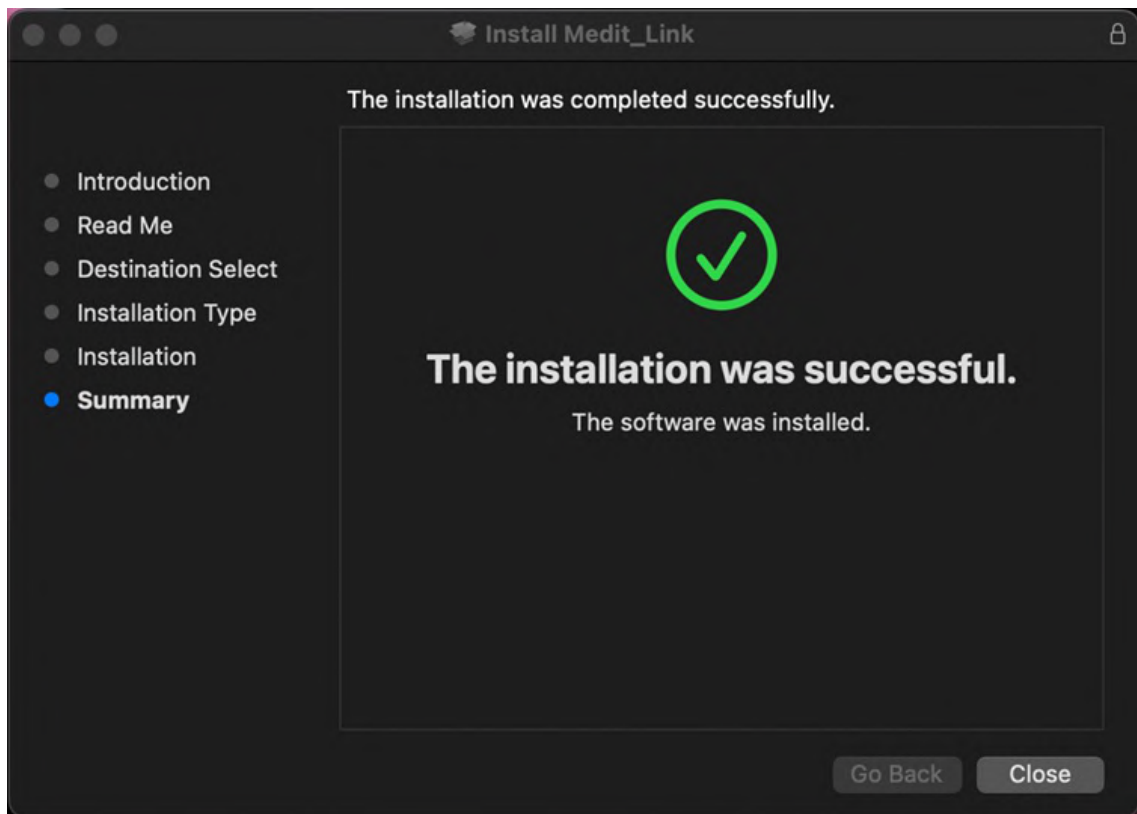

회원가입 및 로그인

Medit Link 웹사이트

Medit Link를 이용하려면 www.meditlink.com에서 회원 가입을 진행하세요.

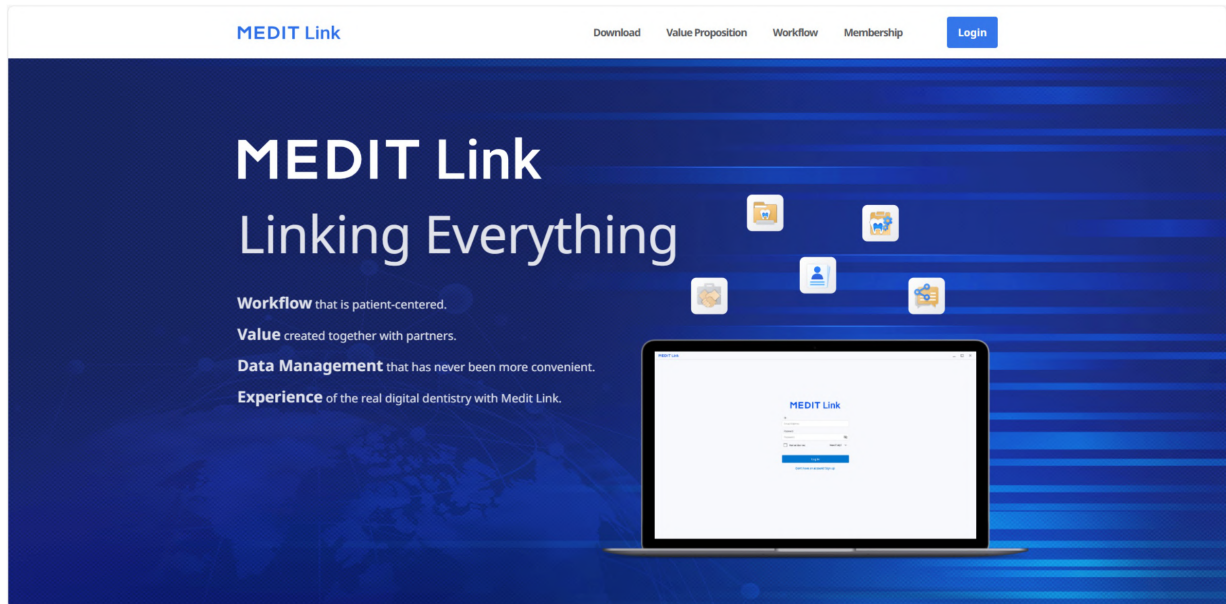

참고

Medit Link China의 경우 www.meditlink.cn으로 접속합니다.

회원가입

Medit Link에서 제공하는 서비스를 사용하기 위해서는 회원 가입을 진행해야 합니다. 치과 또는 기공소 계정으로 가입 후 Medit Link가 제공하는 기능을 사용할 수 있습니다.

아래 계정 유형 중 하나를 선택하여 회원 가입을 진행하고, 가입한 계정에 따라 제한된 기능 및 권한으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 클리닉 - 관리자
- 클리닉 - 멤버
- 랩 - 관리자
- 랩 - 멤버

관리자 계정은 치과 또는 기공소의 대표이며 Medit Link의 서비스를 제한 없이 이용할 수 있습니다. 멤버 계정은 일부 기능에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.

다음 순서에 따라 회원 가입을 진행하세요.

1. 로그인 페이지에서 회원 가입을 클릭하세요.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) 

2. 계정 유형에 대한 설명을 읽은 뒤 가입을 진행하고자 하는 계정 유형에서 "등록"을 클릭하세요.

Create Your Medit Link Account



Clinic

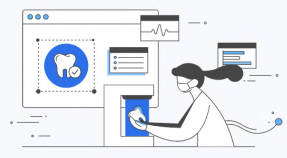

Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 다음과 같은 등록 양식이 나타납니다.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

- 치과 이름 또는 기공소 이름을 입력하고 계정 유형에 따라 다음 안내대로 진행하세요.
 - 관리자로 가입하는 경우, "사용 가능 여부 확인"을 클릭해 입력한 이름이 사용 가능한지 확인하세요.
 - 멤버로 가입하는 경우, "검색"을 클릭해서 소속된 치과 또는 기공소를 찾으세요. 관리자가 미리 해당 치과 또는 기공소를 등록해야만 멤버로 가입할 수 있습니다.
- 가입에 필요한 정보를 입력한 후 "등록" 버튼을 클릭합니다.

참고

등록 과정에서 마케팅 및 프로모션 정보 받기에 동의하시면 Medit가 제공하는 유용한 제품과 서비스에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다.

- 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.
- 전달 받은 링크로 이메일 주소 인증을 완료하면 회원 가입 절차가 완료됩니다.

로그인 및 기본 정보 입력

- 로그인 페이지에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 로그인합니다.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

- 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력하지 않았다면 다음과 같은 창이 뜹니다.

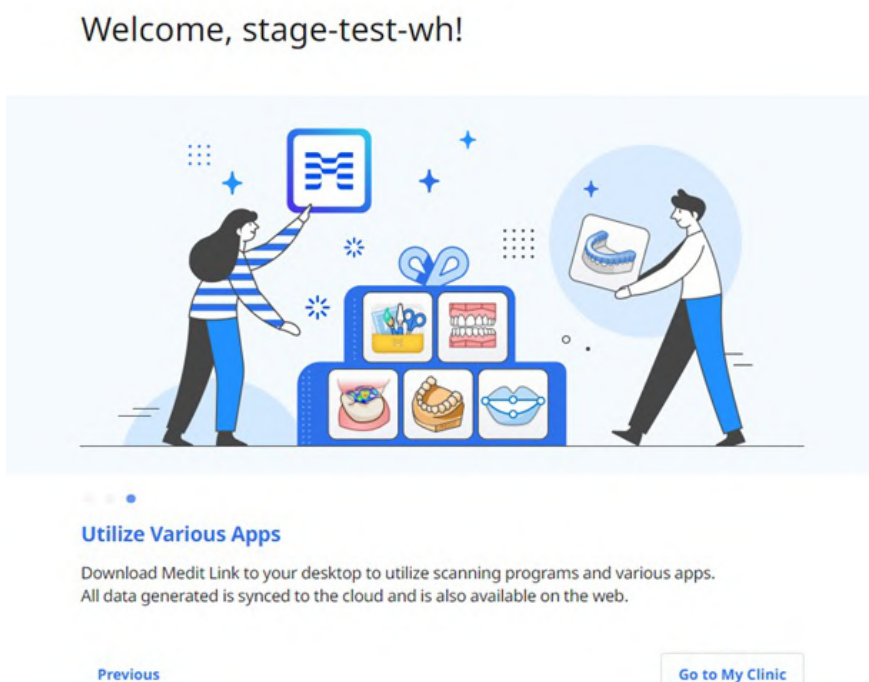

참고


관리자 계정으로 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력해야만 Medit Link를 이용할 수 있습니다.

- "내 치과"로 이동" 또는 "내 기공소로 이동" 버튼을 클릭하면, 업체명, 커버 및 로고 이미지, 제공하는 서비스, 사무실 주소, 사무실 전화번호를 포함한 업체 정보를 입력할 수 있습니다.
- 입력한 정보는 Medit Link Web의 My Info > 내 치과 또는 내 기공소 탭에서 언제든지 수정할 수 있습니다.

Dashboard

Dashboard 개요

App과 Web에서 공통으로 확인할 수 있는 항목으로 Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 시각화된 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

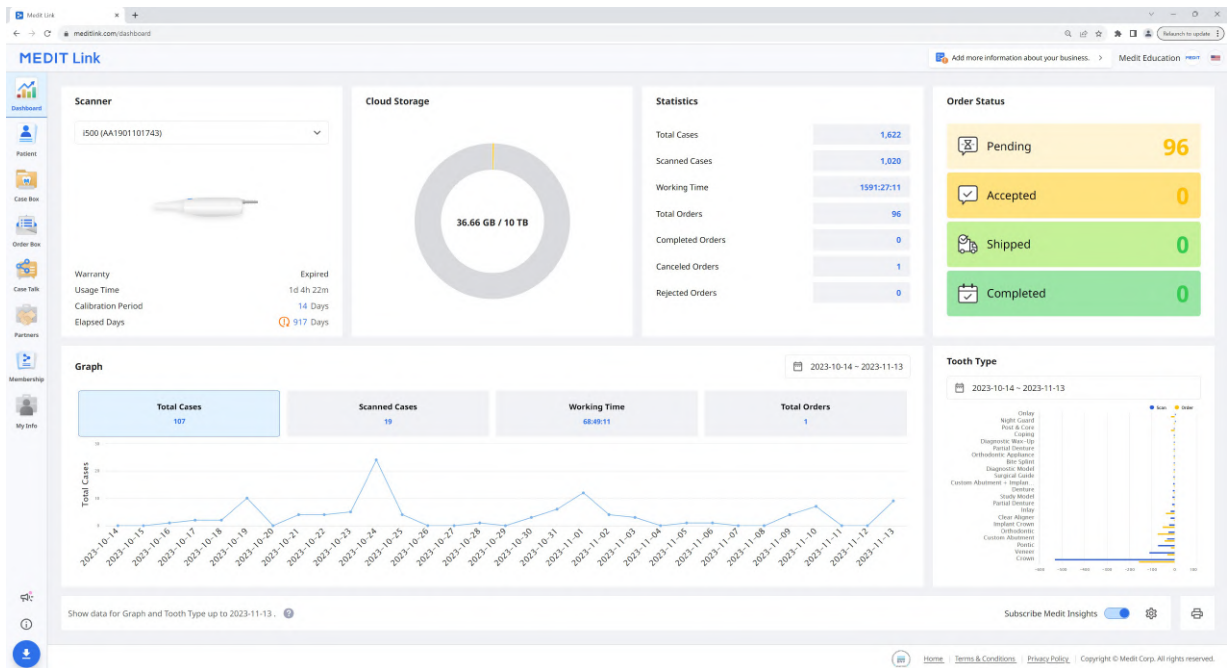

Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

스캐너	워런티, 스캐너 사용 시간, 캘리브레이션 주기, 캘리브레이션 경과 시간 등 사용중인 스캐너의 정보를 제공합니다.
클라우드 저장소	클라우드의 전체 용량과 사용 중인 용량을 표시합니다.
종합 통계	작업 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.
주문현황	주문 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.
그래프	기간 별 작업 정보를 제공합니다.
치아 유형	설정한 기간 동안의 케이스 수, 스캔 횟수, 스캔 시간 등 각종 정보를 그래프로 표시합니다.


Medit Insights

Medit Insights는 개별 사용자에게 사용 통계 리포트를 제공하는 이메일 서비스입니다.

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- Medit Insights

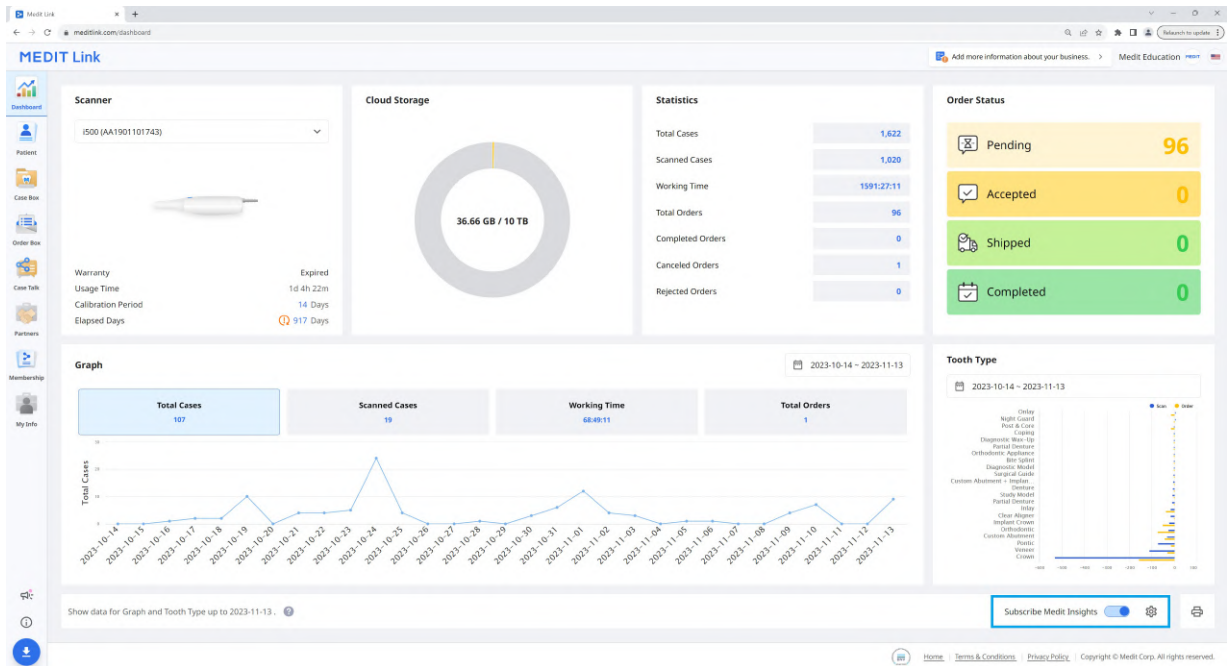

Medit Insights 구독

통계 리포트는 매월 2일에 이메일로 발송됩니다. 리포트 구독을 위해 별도의 가입은 필요하지 않습니다. 대시보드 화면 하단의 “Medit Insights 구독”을 활성화하면 리포트 발송을 요청할 수 있습니다.

Medit Link 계정이 아닌 다른 이메일로 리포트를 받으려면 Medit Insights 구독 우측의 설정 버튼을 클릭하여 이메일 주소를 별도로 설정할 수 있습니다.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

구독 중인 사용자에게는 다음과 같은 사용자 통계 리포트가 매달 2일 발송됩니다.

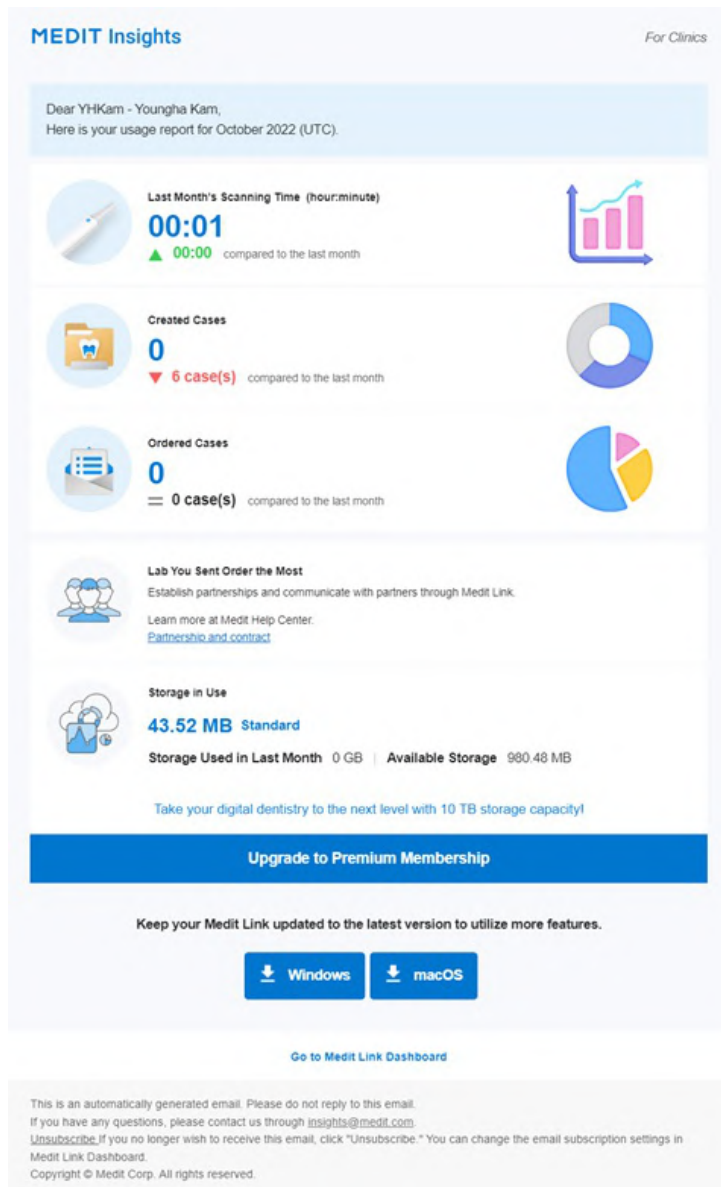

배너	Medit 가 제공하는 유용한 정보를 수신합니다. 배너를 받고 싶지 않은 경우, My Info > 내 정보 > 회사 정보 하단에 위치한 마케팅 및 프로모션 동의 항목을 체크 해제한 후에 “저장”을 클릭합니다.
통계 정보	스캔 시간, 케이스 생성 수, 가장 많이 주문한 랩 등 사용자의 사용 이력을 반영한 통계를 표시합니다.
Medit Link 업데이트	Medit Link 최신 버전의 다운로드 링크를 제공하여 바로 업데이트할 수 있습니다.
Dashboard	Medit Insights에서 제공하는 모든 통계 정보는 Dashboard 를 기반으로 합니다. Dashboard로 이동하여 보다 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.


Medit Insight 이메일 수신 해제하기

Dashboard에서 “Medit Insights 구독”을 비활성화 하거나, 수신한 이메일에서 “구독 해지”를 클릭하여 이메일 수신을 중지할 수 있습니다.

Patient

환자 이름과 환자 ID를 기반으로 케이스를 관리할 수 있습니다.


Medit Link 애플리케이션에서 등록한 모든 환자 목록을 제공하여, 환자 및 환자의 케이스를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

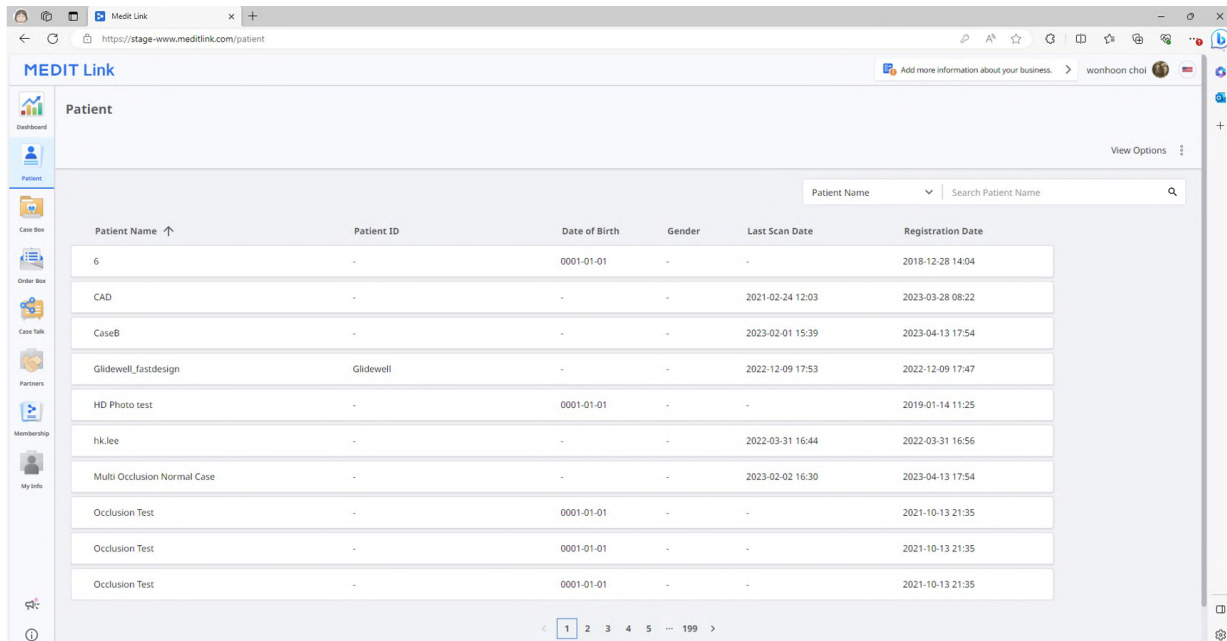

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

환자 검색


1. 환자 목록 우측 상단의 드롭다운 항목에서 환자 이름, 환자 ID 중에 검색 조건을 선택합니다.

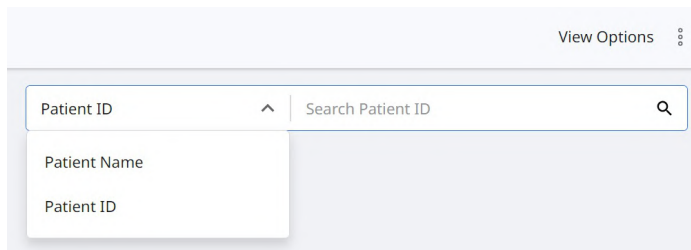

2. 선택한 검색 조건에 맞게 환자 이름 또는 환자 ID를 입력합니다.
3. 입력한 환자 이름 또는 환자 ID에 해당하는 환자만 목록에 보여집니다.

Case Box/Work Box


Order Box (치과) 또는 In Box(기공소)에서는 Medit Link 어플리케이션에서 생성한 모든 케이스를 표시합니다. 별도의 프로그램을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 통해서 모든 케이스를 확인할 수 있습니다.

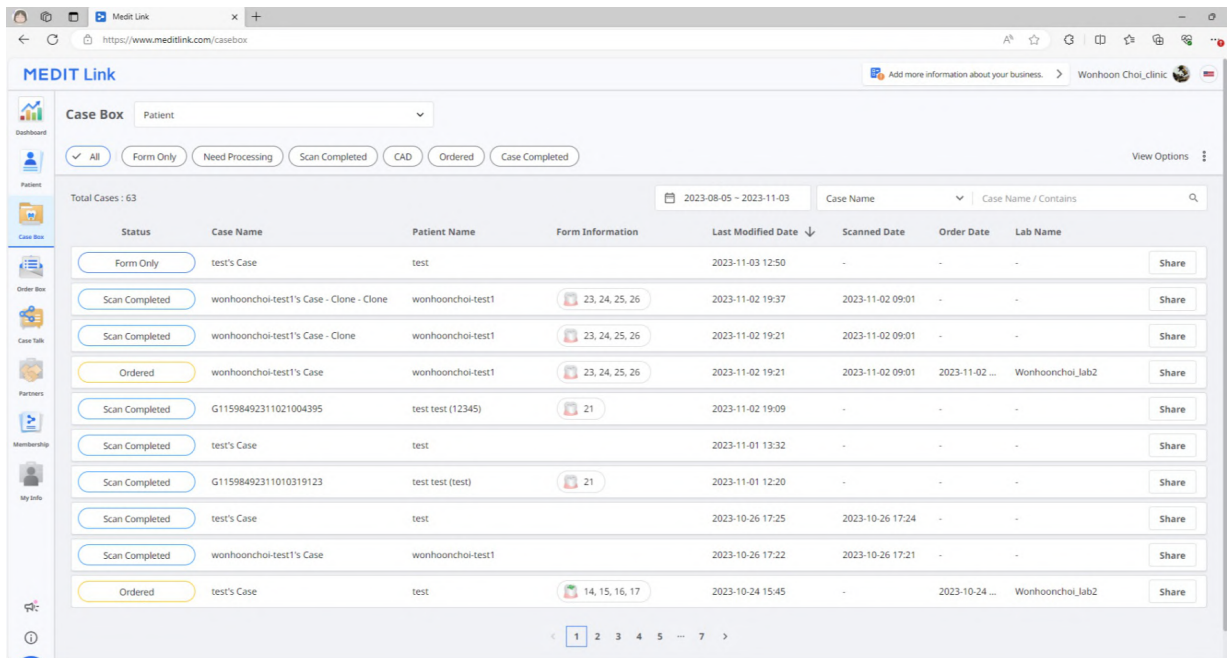


케이스 필터링

환자 검색을 통한 필터링

환자별로 케이스를 필터링할 수 있습니다. 특정 환자의 케이스를 확인할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

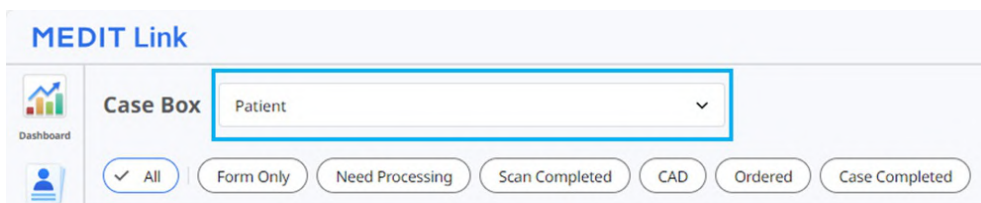

1. 검색창에 환자 이름을 입력합니다.

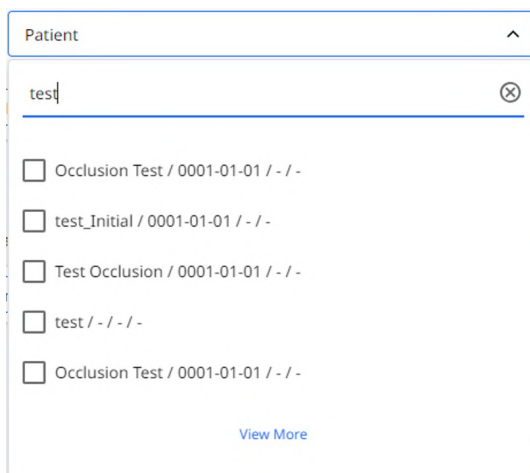

2. 검색 결과에서 케이스를 보기를 원하는 환자를 선택합니다.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. 선택한 환자의 케이스만 리스트에 표시되어 진료할 환자의 케이스를 편리하게 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface. The 'Status' filter is set to 'Form Only'. The table displays the following cases:

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

상태를 이용한 필터링

상태에 따라 케이스를 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다.

- 클릭하여 선택한 상태에 해당하는 케이스만 표시할 수 있습니다. 선택된 상태의 케이스만 브라우저에 표시됩니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

케이스를 필터링하기 위한 상태의 종류는 계정에 따라 다르게 제공됩니다.

Case Box (치과 계정)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (기공소 계정)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

기간 설정을 이용한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.

2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

- 전체: 모든 케이스를 표시합니다.
- 직접 설정: 시작 날짜와 종료 날짜를 지정하면 이 기간 내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 오늘: 오늘 수정된 케이스를 표시합니다.
- 어제: 어제 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 7일: 오늘을 제외한 7일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 30일: 오늘을 제외한 30일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 90일: 오늘을 제외한 90일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 이번 달: 이번 달에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 지난 달: 지난 달에 수정된 케이스를 표시합니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.


검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.

검색 옵션은 계정에 따라 다르게 제공됩니다.

Case Box (치과 계정)	케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소 이름
Work Box (기공소 계정)	케이스 이름, 환자 이름, 치과 이름, 주문 ID

케이스 상세 정보

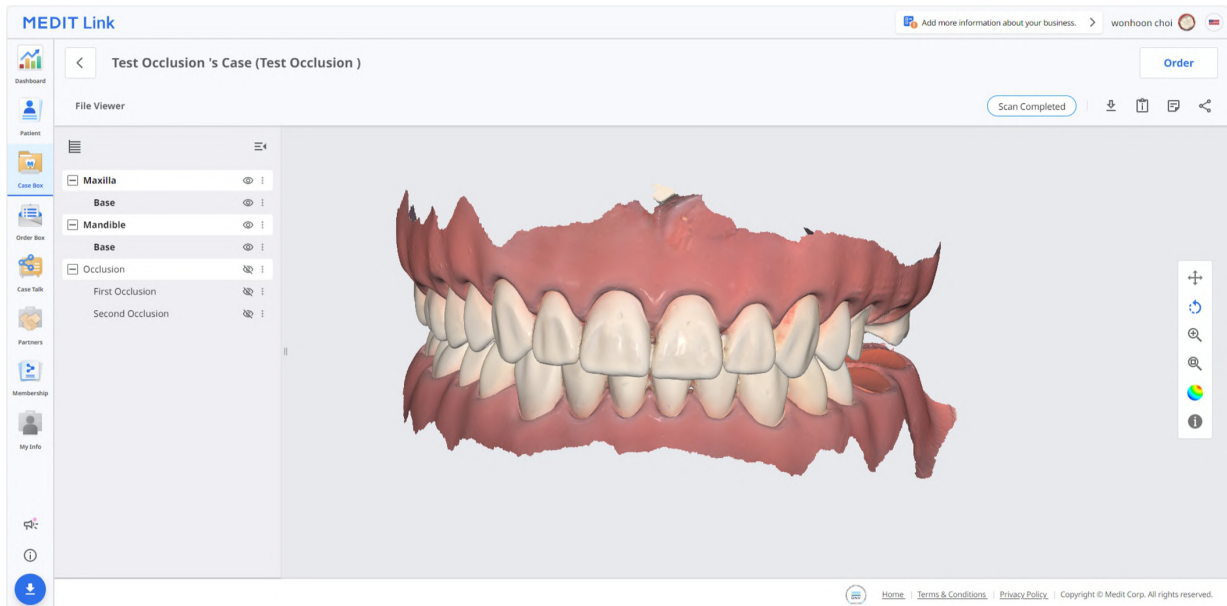


Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

	케이스 상태	케이스의 상태를 표시합니다.
	Order Box/In Box로 이동	케이스의 상세 정보를 보기 위해 Box를 이동합니다. (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	다운로드	케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스 정보를 확인하고 PDF로 저장하거나 프린트합니다.
	메모 및 태그	케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.
	공유	공유 링크를 생성합니다. 공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 Chrome, Firefox, Safari 와 같은 인터넷 브라우저에서 3D 데이터를 확인할 수 있습니다.

Order Box/In Box

Order Box (치과) 또는 In Box(기공소)에서는 Medit Link 어플리케이션에서 주문한 케이스를 표시합니다.

주문 탭

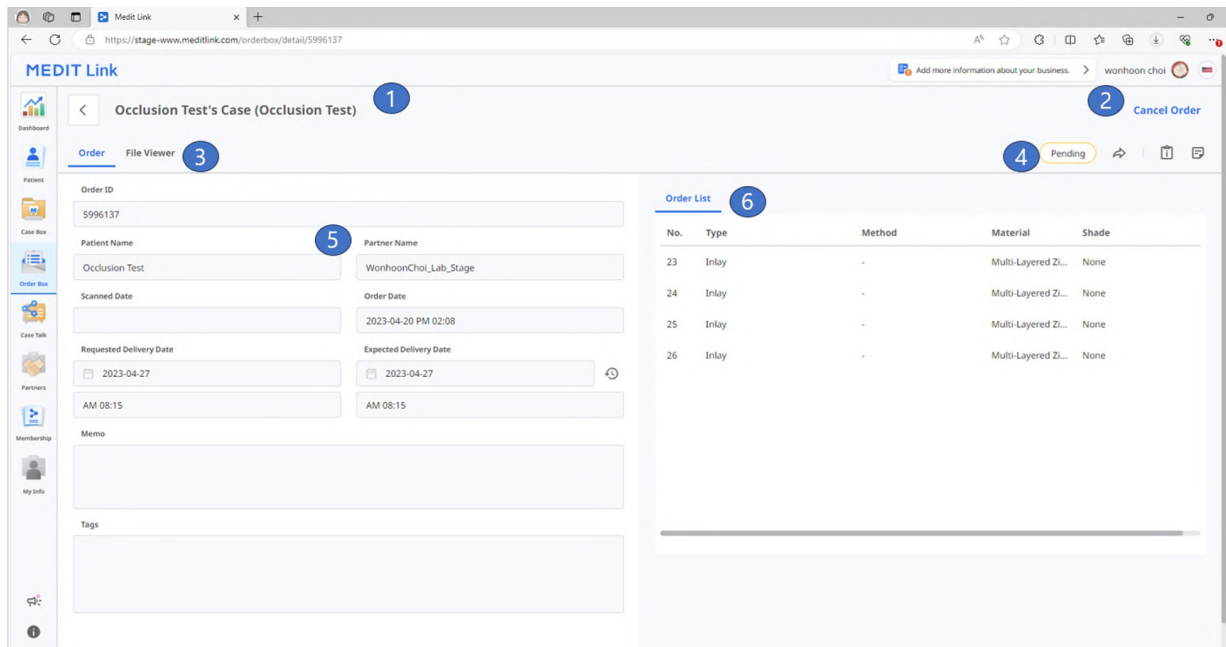

- 1 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.
- 2 주문 수락/취소, 배송/수령 등 주문 관리를 위한 기능을 제공합니다.
- 3 사용 가능한 탭을 보여줍니다. (주문, 파일 뷰어)
- 4 케이스 상태, 상세 정보, 케이스 정보, 메모 및 태그 등의 기능을 제공합니다.
- 5 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모 등 주문 상세 정보를 표시합니다.
- 6 주문한 상품 정보, 배송 정보를 표시합니다.


Order Box/In Box에서 제공하는 탭

주문	파일 뷰어
주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모, 태그 및 주문한 상품에 대한 정보 등 주문 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.	스캔이나 CAD 등을 통해 생성된 결과 파일을 확인할 수 있습니다. 사용자가 첨부하거나 각 프로그램으로부터 획득한 3D 데이터나 이미지를 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Case Talk

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, Medit Link 구성원에게 공유할 수 있습니다.

Case Talk을 통해 Medit Link의 웹과 앱에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

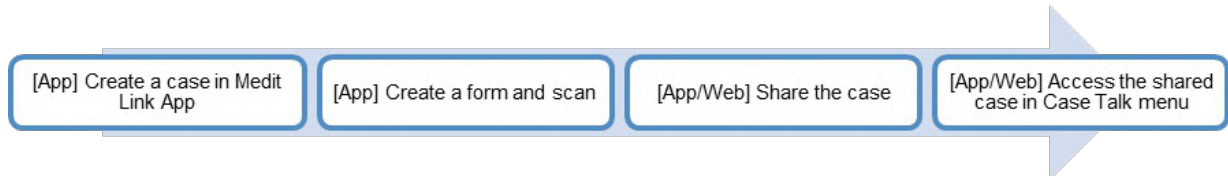


공유한 케이스는 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저에서 확인 가능하여 인터넷 사용이 가능한 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 기기에서 쉽게 3D 스캔 데이터를 확인하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.


Case Talk 생성하기

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스로부터 공유 링크를 생성합니다.

1. 공유하고 싶은 케이스를 선택하고 우측의 "공유" 버튼을 클릭합니다.

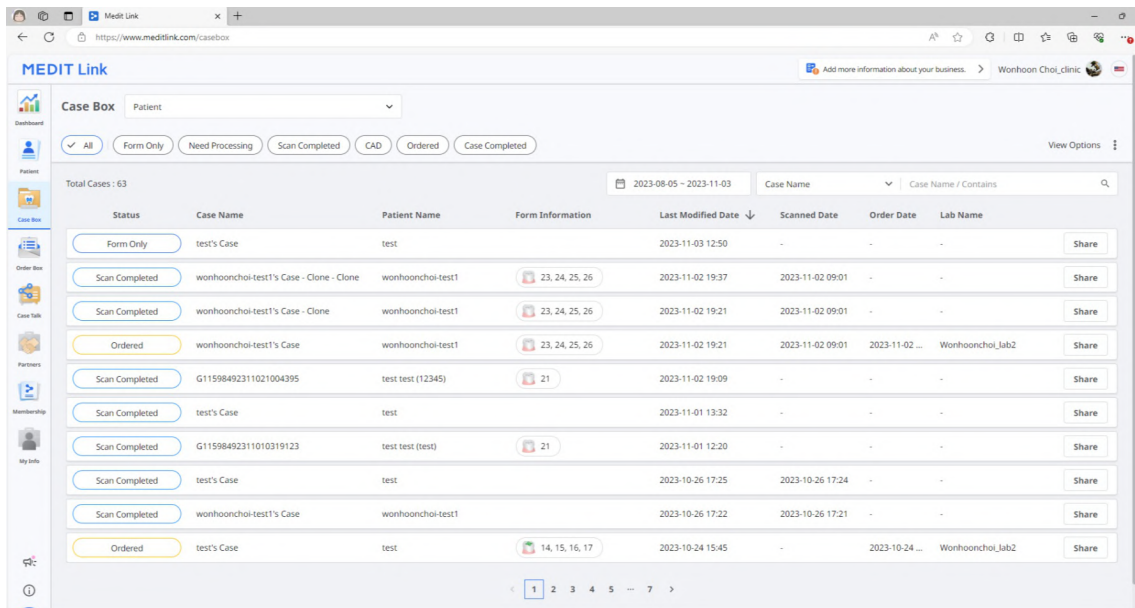

2. 공유하고 싶은 파일을 선택합니다.

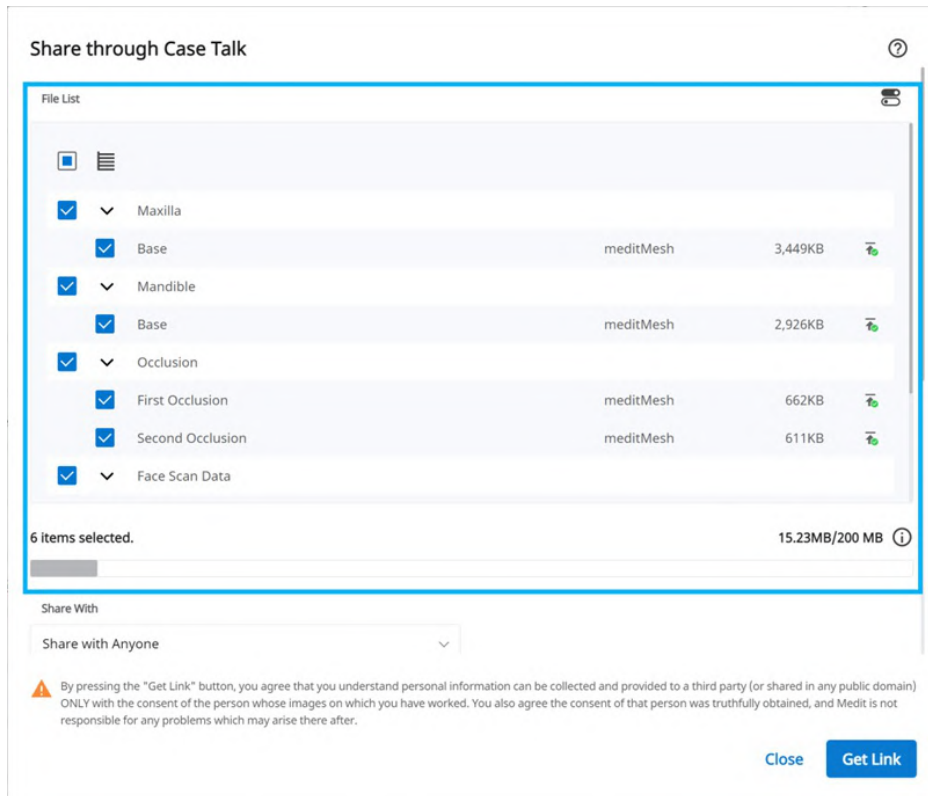

3. 공유 대상 및 공유 옵션을 선택합니다.
4. "링크 생성"을 클릭하여 공유 링크를 생성합니다.

공유 범위 및 권한 설정

Share through Case Talk

?

Share With

Share via

Share with specific people

✉

+

☰

1

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

📅

2022-06-28

1

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐

PIN Code

Enter PIN Code

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒

Share the patient's name

☒

Grant Download Permission

Premium Feature

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒

Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

공유 대상	- 모두에게 공유 공유 링크를 생성합니다. 생성한 링크를 모두에게 공유합니다. - 특정 사람에게 공유 공유 링크를 생성하고, 생성한 링크를 특정 사람에게 공유합니다.
공유 방법	“특정 사람에게 공유”를 선택하면, 여러가지 방법을 이용해 지정한 사람에게 공유 링크를 전달할 수 있습니다. - 이메일 주소 - SMS - 파트너
만료 날짜	공유 링크의 만료 날짜를 설정합니다. 링크가 만료된 후, 해당 링크에 접속을 할 수 없습니다. 현재 날짜로부터 최대 90일까지 만료 날짜를 연장할 수 있습니다.
PIN 코드	보안을 위해 6자리의 PIN 번호를 설정해 주세요.
환자 이름 공유	이 옵션을 사용하면 공유 링크에 접속한 모든 사용자에게 환자 이름이 공개됩니다.
다운로드 권한 부여	이 옵션을 선택한 경우, 공유 링크에 접속하는 모든 사용자가 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.
코멘트 허용	- 이 옵션을 선택하면 공유 링크를 통해서 커뮤니케이션 할 수 있습니다. - 이 옵션을 사용하지 않으면 공유 링크에 접속한 사용자는 코멘트 및 주석 확인만 가능합니다.
코멘트	공유 받을 사람에게 전달할 메시지를 입력합니다.

Case Talk 상세

32

공유 링크의 파일을 확인합니다. 케이스 상세 화면에서 다음 기능을 제공합니다.

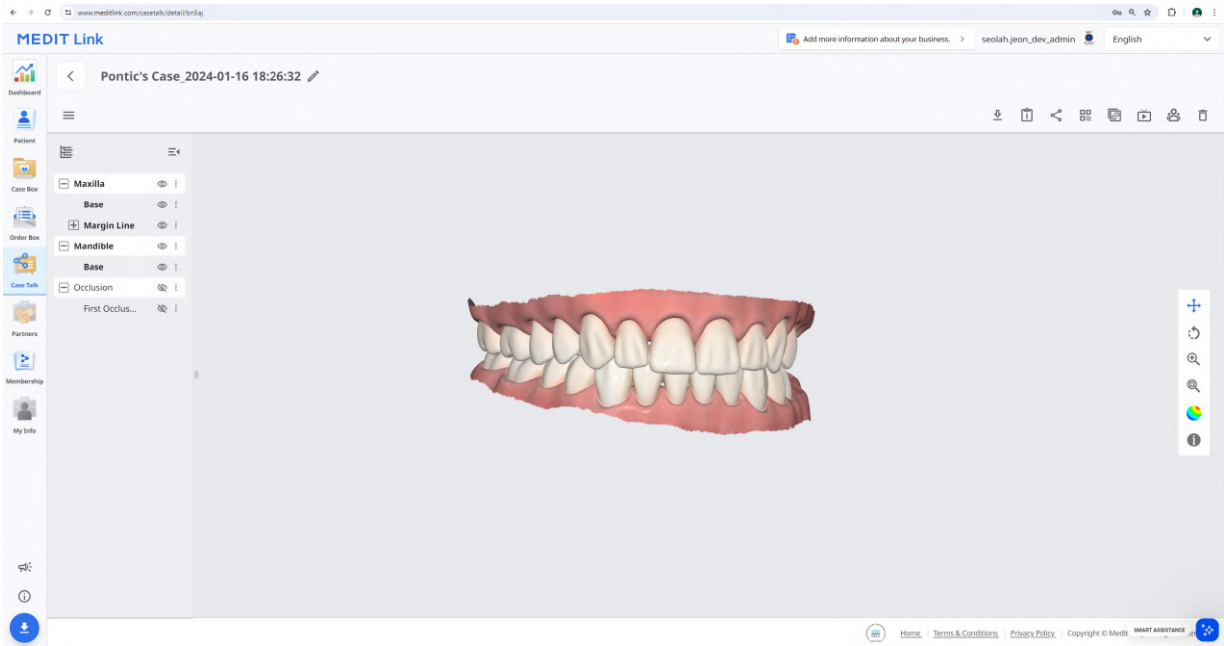

	다운로드	케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스의 상세 정보를 제공합니다.
	공유	공유 설정을 변경합니다.
	QR 코드	QR 코드로 케이스를 공유합니다.
	링크 복사	공유 링크를 클립보드로 복사합니다. 인터넷 브라우저를 이용해 공유 아 이템을 확인할 수 있습니다.
	라이브	화면을 링크에 접속한 사용자와 공유합니다. 링크에 접속한 모든 사용자에게 화면이 공유됩니다.
	참가자	링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.
	삭제	공유 링크를 삭제합니다. 더 이상 공유 링크에 접속할 수 없게 됩니다.

참고


Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브
- 참가자

Web Viewer

Case Talk에서 공유된 데이터를 인터넷 브라우저를 이용해 확인합니다.

주석, 코멘트 기능을 사용하여 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.

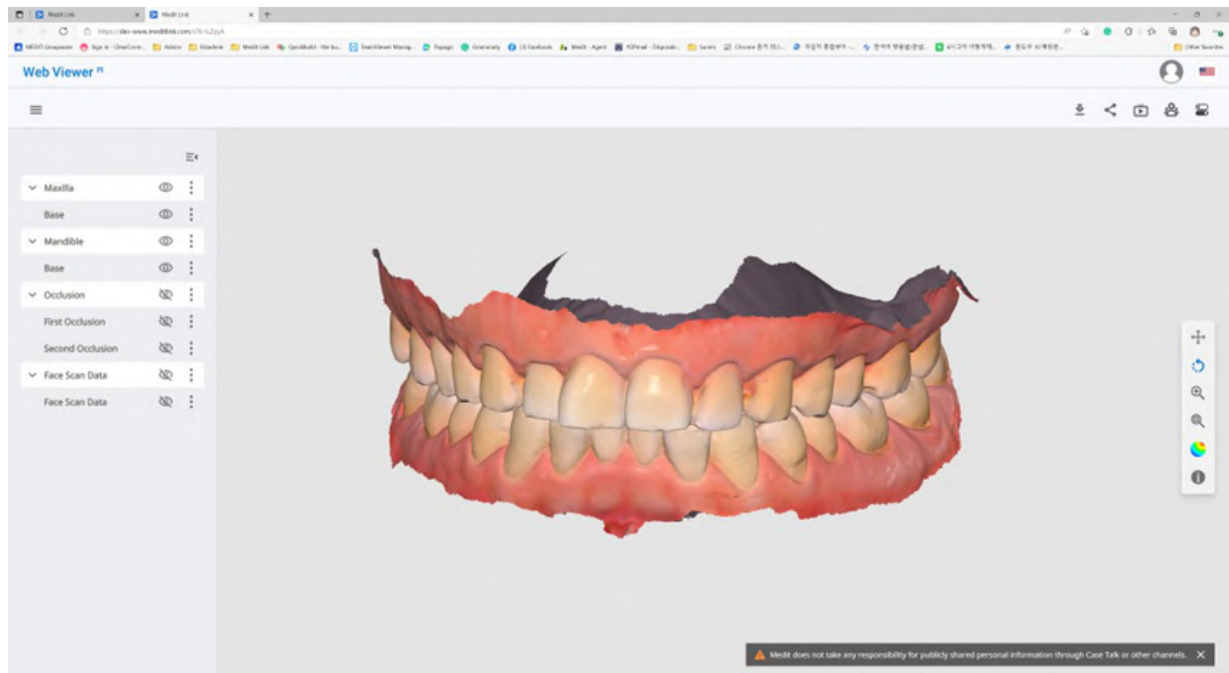

	다운로드	케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스의 상세 정보를 제공합니다.
	공유	공유 설정을 변경합니다.
	QR 코드	공유 링크를 클립보드로 복사합니다. 인터넷 브라우저를 이용해 공유 아이템을 확인할 수 있습니다.
	라이브	화면을 링크에 접속한 사용자와 공유합니다. 링크에 접속한 모든 사용자에게 화면이 공유됩니다.
	참가자	링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.
	치아 라벨링	치아 번호 표시 방법을 선택합니다.


참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브
- 참가자

주석

3D 모델의 지정 위치에 주석을 추가할 수 있습니다. 추가한 주석은 링크에 접속한 모든 사용자가 확인할 수 있습니다.

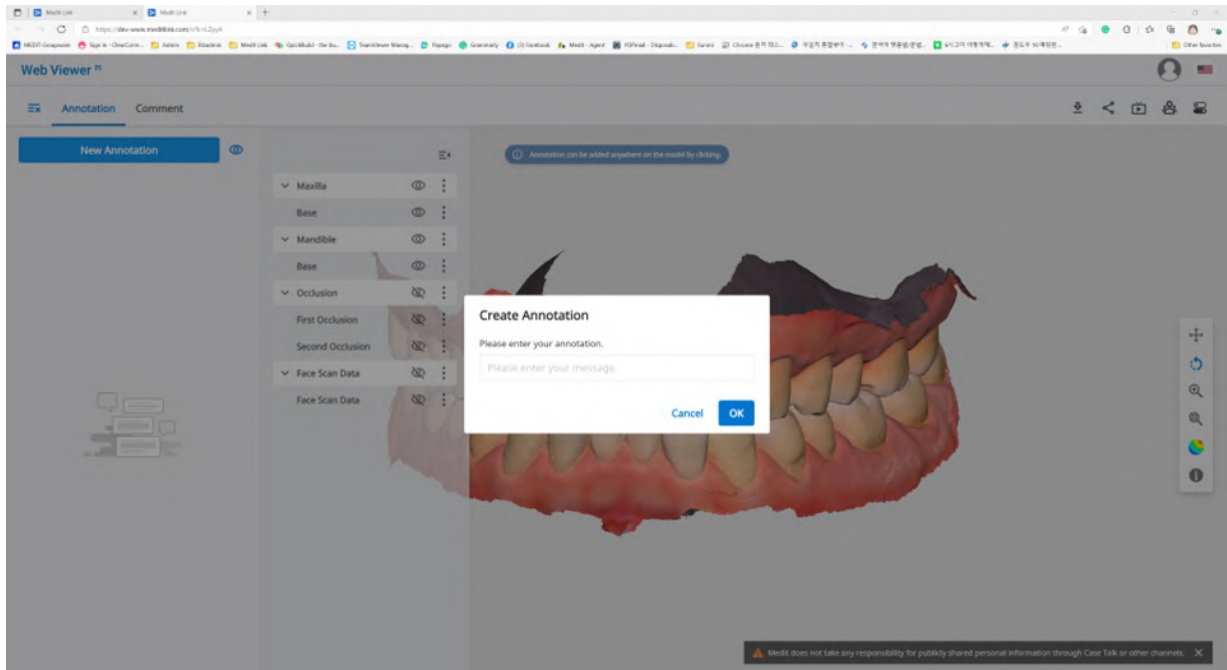

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 어노테이션

1. 좌측 상단의 메뉴에서 "어노테이션" 탭을 클릭합니다. "어노테이션 추가"를 클릭합니다. 3D 모델의 특정 위치를 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.
2. 전달하고 싶은 내용을 입력한 후 "확인"을 클릭합니다.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. 주석을 이용해 간단한 의견 교환이 가능합니다.
생성된 주석에 답장을 입력하고 "전송" 할 수도 있습니다.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1

09-09 20:31

Please enter your reply

Send

코멘트

코멘트 기능을 이용해 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 코멘트

실시간 화면 공유

케이스를 공유한 사용자가 자신이 보는 화면을 접속한 사용자와 실시간으로 공유할 수 있습니다.

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브

1. "라이브" 버튼을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.





2. "확인"을 클릭하여 화면 공유를 시작합니다.
3. 공유 링크에 접속한 다른 사용자들이 화면 공유를 수락합니다.
4. 화면 공유를 요청한 사용자의 화면이 요청을 받은 사용자의 화면과 동기화되어 표시됩니다.



데이터 트리

데이터를 속성에 따라 그룹화하여 표시합니다. 데이터 보기/숨기기, 불투명도 조정 등을 수행할 수 있습니다.

데이터 트리 메뉴

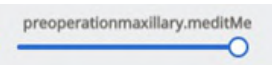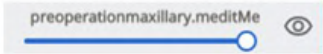보기 / 숨기기	눈 모양 버튼을 클릭하여 데이터 보이기 또는 숨기기합니다. 데이터 그룹 또는 개별 데이터를 보이기/숨기기 할 수 있습니다.
불투명도	요소에 마우스를 가져가면 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. 슬라이더바를 우측으로 이동할수록 데이터의 불투명도가 올라가 데이터가 더 선명하게 보이고, 슬라이더바를 좌측으로 이동할 수록 데이터의 불투명도가 낮아져 데이터가 더 투명하게 보입니다. 
확장 메뉴	요소의 오른쪽에 확장 메뉴를 제공합니다. 확장 메뉴는 다음 항목을 포함합니다.  • 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다. • 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다.

3D 모델 조정

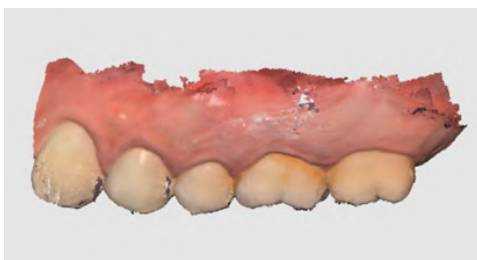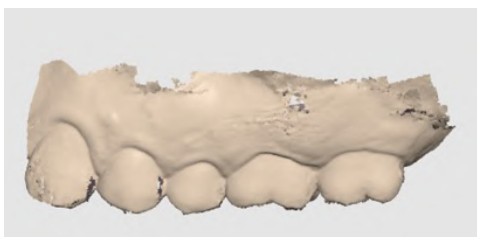	이동	모델을 이동합니다.
	회전	모델을 회전합니다.
	확대/축소	모델을 확대/축소 합니다.
	화면 맞춤	모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.
	모델 보기 방법	스캔 데이터를 색상 정보와 함께 표시합니다. 
		스캔 데이터를 색상 정보 없이 표시합니다. 

Partners

등록된 업체를 검색해서 파트너십을 요청하거나, 현재 파트너십을 맺고 있는 업체의 목록을 확인할 수 있습니다.


참고

Medit Link China는 Google 지도를 이용하는 서비스를 제공하지 않습니다.

파트너 검색


업체 이름, 주소를 기반으로 Medit Link에 가입되어 있는 사용자를 검색해서 표시합니다.

검색한 결과에서 협업을 원하는 업체에 파트너십을 요청할 수 있습니다.

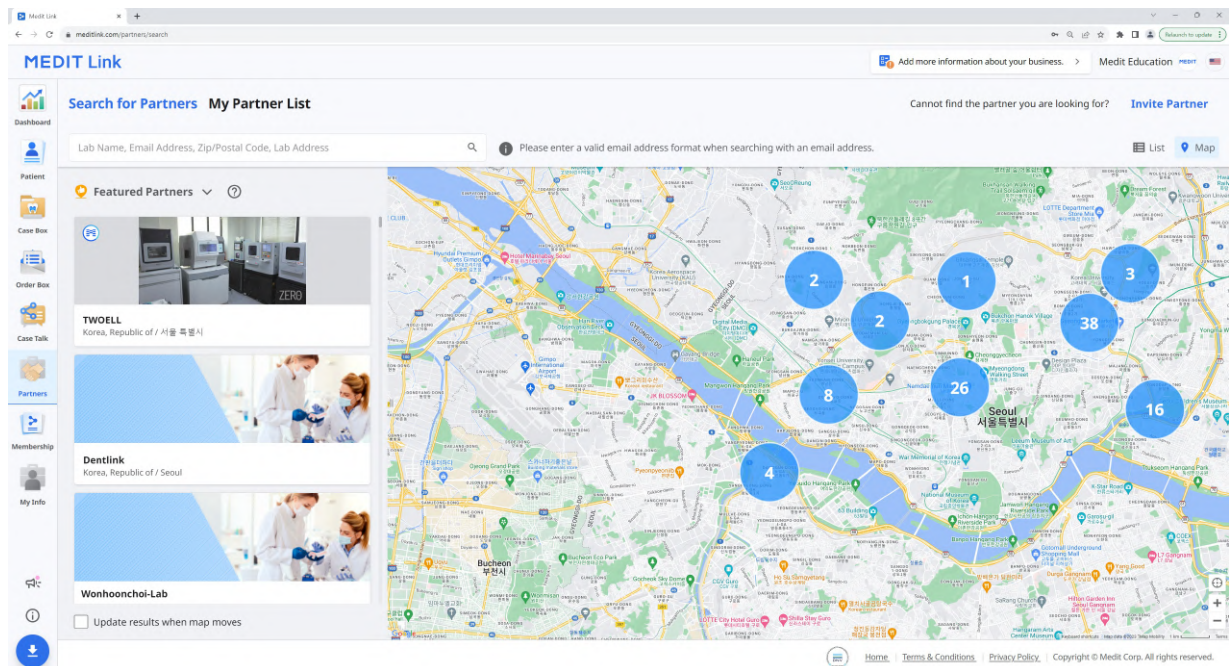

내 파트너 목록

내 파트너 리스트에서 현재 파트너십을 맺고 있는 업체 목록을 확인할 수 있습니다.

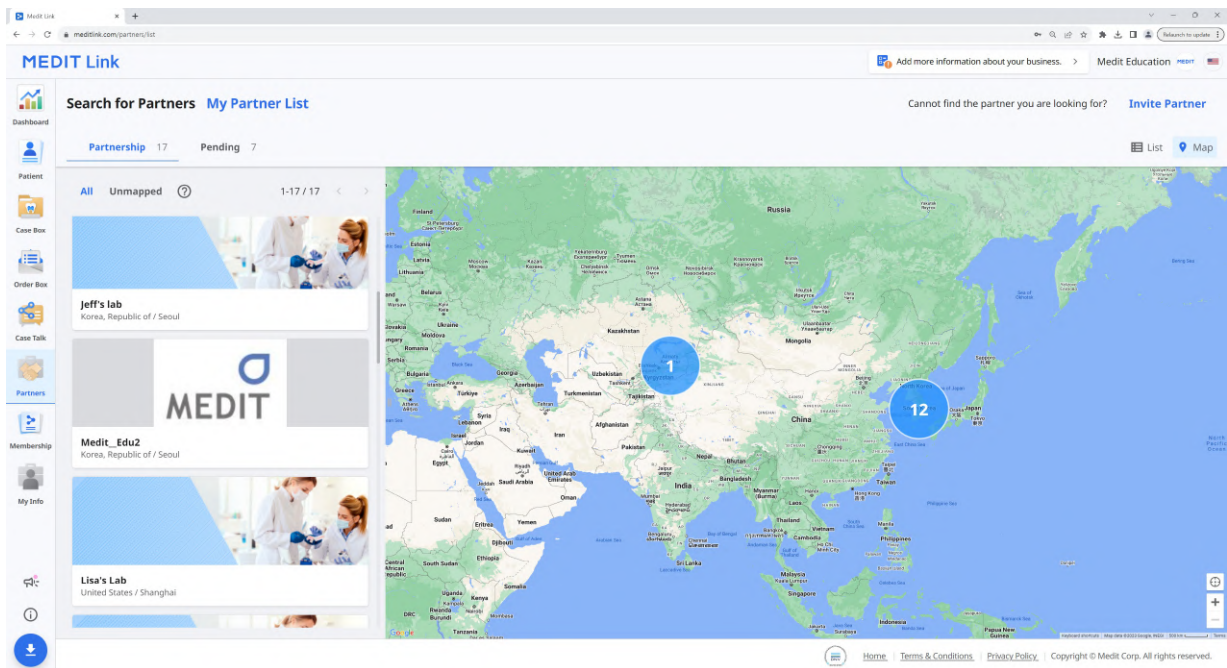

파트너 초대

협업하고 싶은 사용자가 Medit Link 사용자가 아니라도 회원 가입 및 파트너십 체결을 동시에 요청할 수 있습니다. 상대방이 초대를 수락하면 자동으로 파트너십이 체결됩니다.

1. "파트너 초대"를 클릭하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.
2. 파트너십을 요청하고자 하는 업체의 이메일 주소를 입력한 후 초대 메일을 전송합니다.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. 초대를 받은 업체에서 확인 후 회원 가입을 진행하면 파트너십이 맺어지고, Medit Link 서비스를 사용할 수 있습니다.


Membership

멤버십

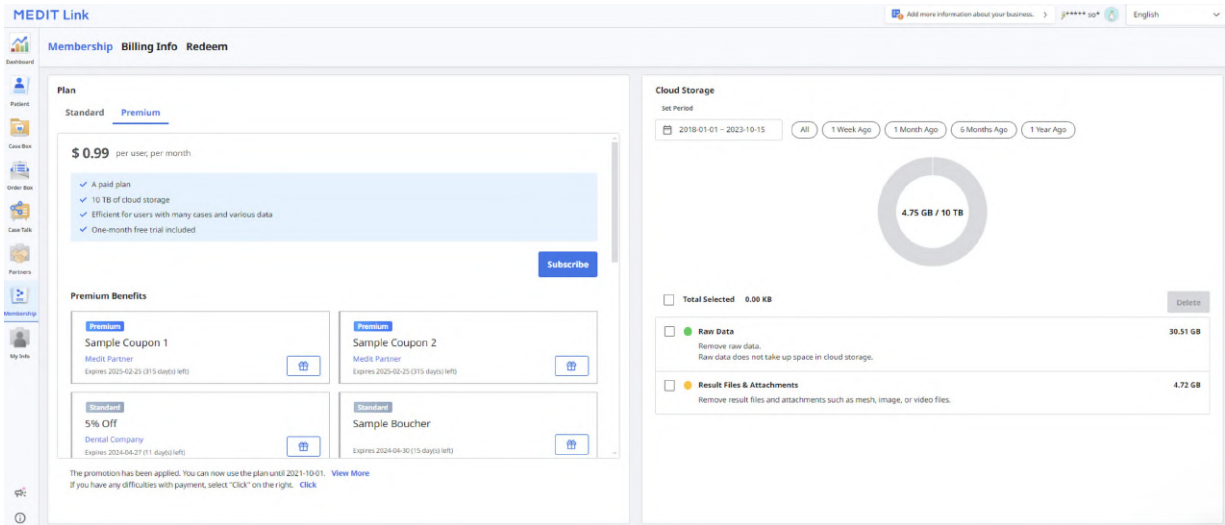

Plan

할인 쿠폰, 바우처 등 각 요금제가 제공하는 혜택과 사용자의 구독 상태를 확인할 수 있습니다. 언제든지 요금제를 업그레이드하거나 구독을 취소할 수 있습니다.

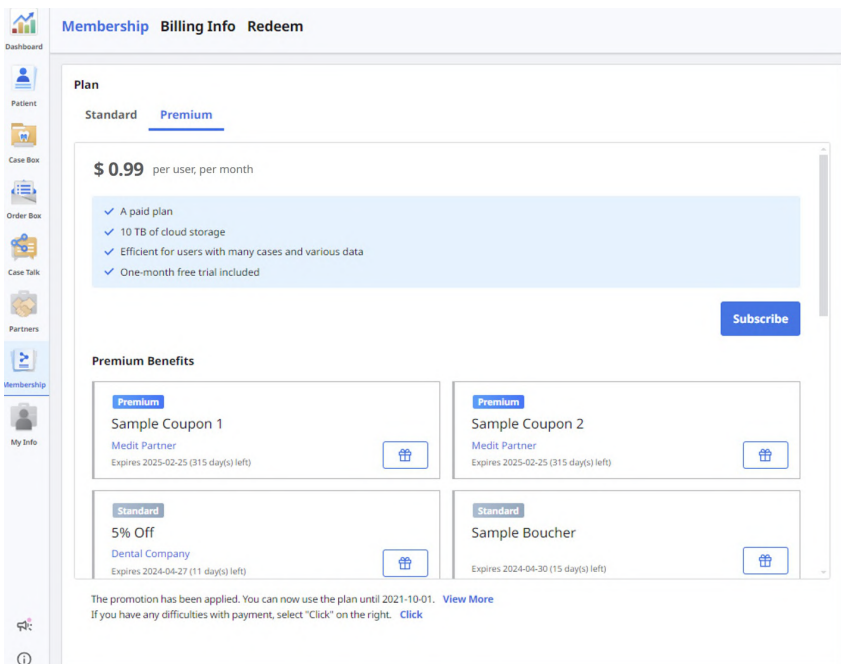

Medit Link는 다음의 멤버십 요금제를 제공합니다.

Standard

- 모든 회원에게 제공되는 무료 플랜
- 1 GB의 클라우드 저장 공간 제공
- Medit Link를 처음 시작하는 고객에게 적합

프리미엄

- 구독 가입을 통해 제공되는 유료 플랜
- 10 TB의 대용량 클라우드 저장 공간 제공
- 케이스가 많거나, 다양한 데이터를 저장하는 고객에게 적합
- 가입 후 1달간 무료 사용 제공


	Standard	프리미엄
클라우드 저장소	1 GB	10 TB
요금	무료	0.99달러/월
* 클라우드 저장 용량에서 Raw data는 제외됩니다.		

참고

Medit Link China는 멤버십 서비스를 향후에 제공할 예정입니다. 정식 서비스 시작 전까지는 무료로 프리미엄 멤버십을 이용할 수 있습니다.

클라우드 저장소

우측에는 클라우드 스토리지를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

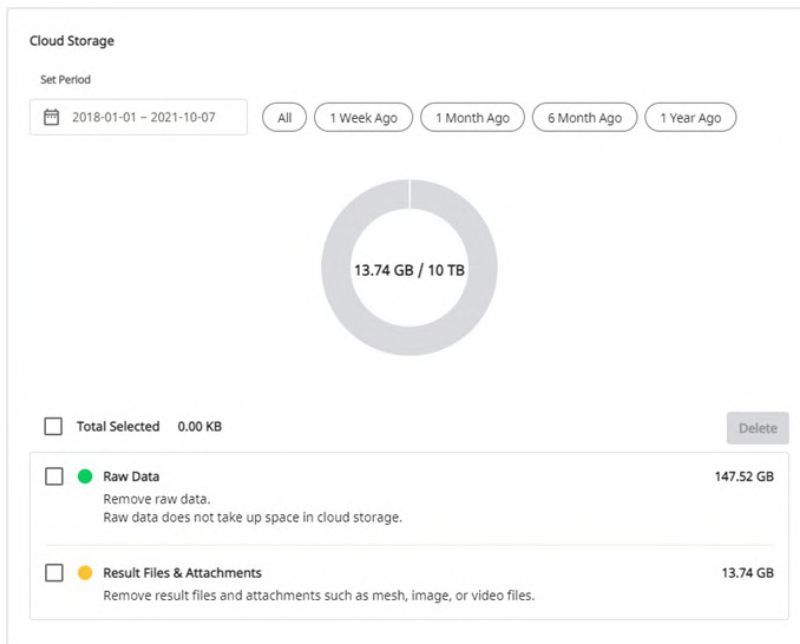


기간 설정	기간을 설정하면 설정한 기간 내의 데이터가 삭제 대상이 됩니다. • 전체: 모든 데이터를 표시합니다. • 일주일 전: 생성 후 1주일이 경과한 데이터를 표시합니다. • 1개월 전: 생성 후 1개월이 경과한 데이터를 표시합니다. • 6개월 전: 생성 후 6개월이 경과한 데이터를 표시합니다. • 1년 전: 생성 후 1년이 경과한 데이터를 표시합니다.
원본 데이터	원본 데이터는 클라우드 스토리지 용량을 사용하지 않아, 그래프에 표시되지 않습니다. 개인 정보 보호 등의 이유로 클라우드 스토리지에서 원본 데이터를 관리하고 싶은 경우 사용할 수 있습니다.
결과 파일 및 첨부 파일	결과 및 첨부 파일은 클라우드 스토리지의 용량을 사용합니다. 클라우드 스토리지 용량이 가득 찼을 경우, 사용하지 않는 데이터를 삭제하여 용량을 확보할 수 있습니다.
삭제	선택한 데이터를 클라우드로부터 삭제합니다.

멤버십 구독하기


무료 Standard 요금제를 사용하고 있거나, 리덤 코드로 Premium 요금제를 사용하고 있는 경우에는 Premium 요금제를 구독할 수 있습니다.

결제는 Stripe 서비스(www.stripe.com)를 통해 이루어 집니다.

1. 멤버십 > 요금제 > Premium으로 이동해서 "구독" 버튼을 클릭합니다.

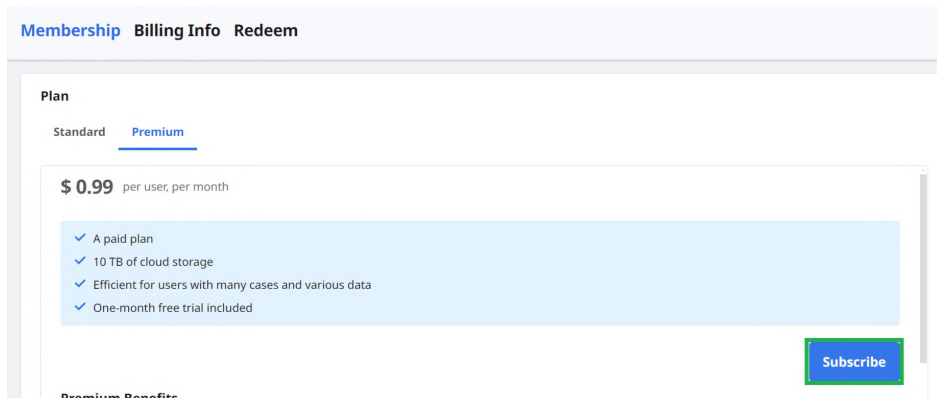

2. 플랜에 대한 내용을 확인후 "구독하기"를 클릭합니다.

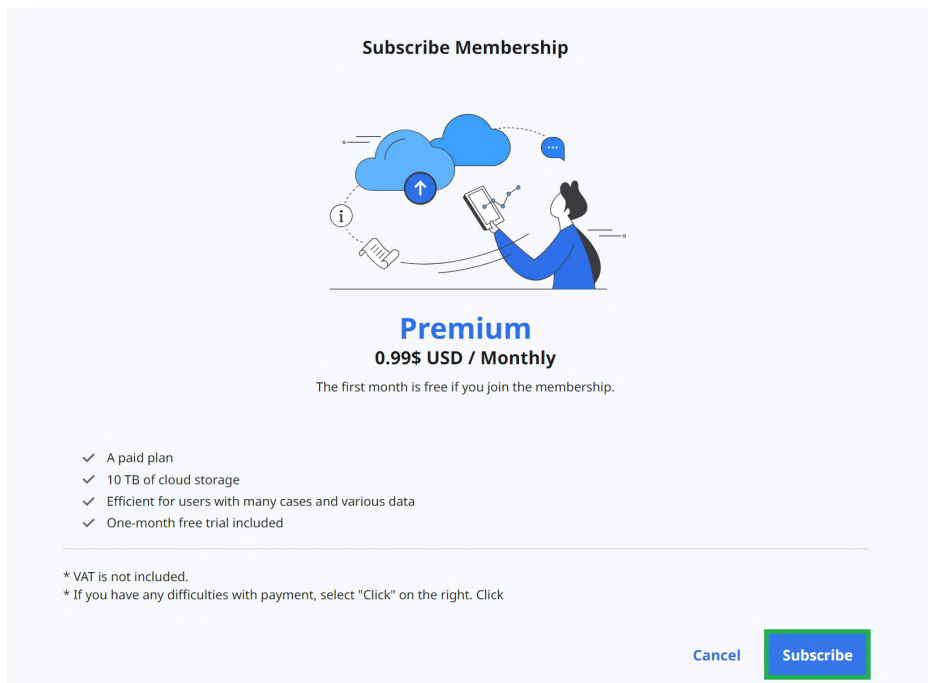

3. 가격 및 조건을 확인 후 결제 정보를 입력합니다. "구독하기"를 클릭하여 결재를 진행합니다.

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic **\$0.99**
Medit Link Membership
Billed daily

Subtotal **\$0.99**

1 MONTH FREE – for first subscription **-\$0.99**
100% off for a day

Total due today **\$0.00**

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with **link** ⇒

Or pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234



MM / YY

CVC



Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea



☐ **Securely save my information for 1-click checkout**
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

4. 결제가 완료될 때까지 창을 닫지 말고 잠시 기다려 주세요. 결제가 완료되면 다음과 같은 메시지가 보여집니다.

Subscribe Membership



Payment Successful.


[Invoice](#)

[Close](#)

멤버십 구독 취소하기

멤버십 서비스를 언제든지 구독 취소할 수 있습니다. 멤버십 서비스가 구독 취소되면 남은 결제 기간 동안 프리미엄 플랜이 유지됩니다. 다음 결제일에 스탠다드 플랜으로 변경되고, 클라우드 스토리지 용량은 **1 GB**로 제한됩니다. 클라우드 스토리지 용량이 꽉 찬 경우, 파일은 백업되지 않고 파일 공유 및 주문은 할 수 없습니다.

1. "구독 취소"를 클릭합니다.
2. 내용을 확인한 후 "구독 취소"를 클릭합니다.

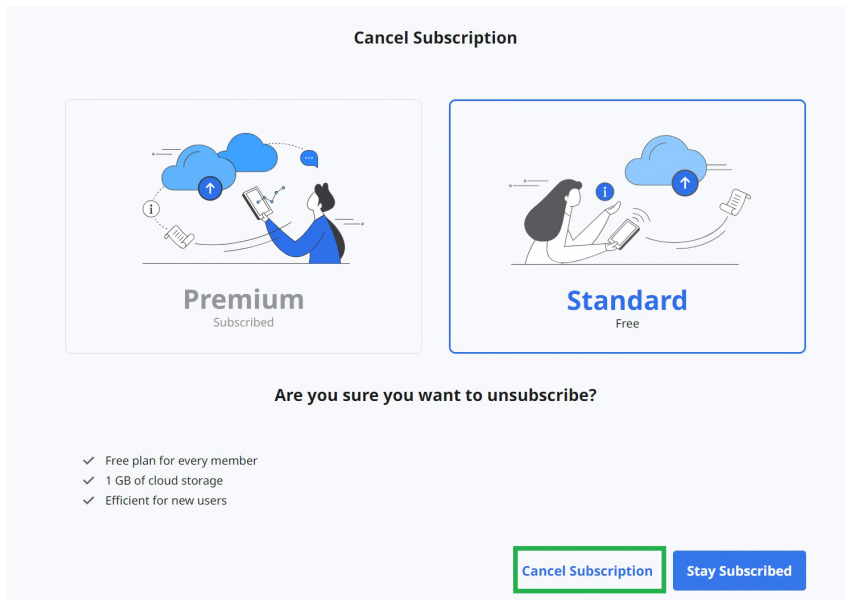

3. 확인 창이 발생하면 "구독 취소"를 한번 더 클릭합니다.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10


[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

4. 구독 취소가 완료되었습니다.
5. 다음 결제일에 스탠다드 플랜으로 변경되고, 클라우드 스토리지 용량은 **1 GB**로 제한됩니다. 클라우드 스토리지 용량이 꽉 찬 경우, 파일은 백업되지 않고 파일 공유 및 주문은 할 수 없습니다.



결제 정보

멤버십 구독 사용자는 각 결제 건에 대한 청구서를 포함한 결제 이력을 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 결제 방법을 추가하거나 변경할 수 있습니다. 결제 방법을 변경하는 경우, 다음 결제일부터 변경한 내용이 적용됩니다.

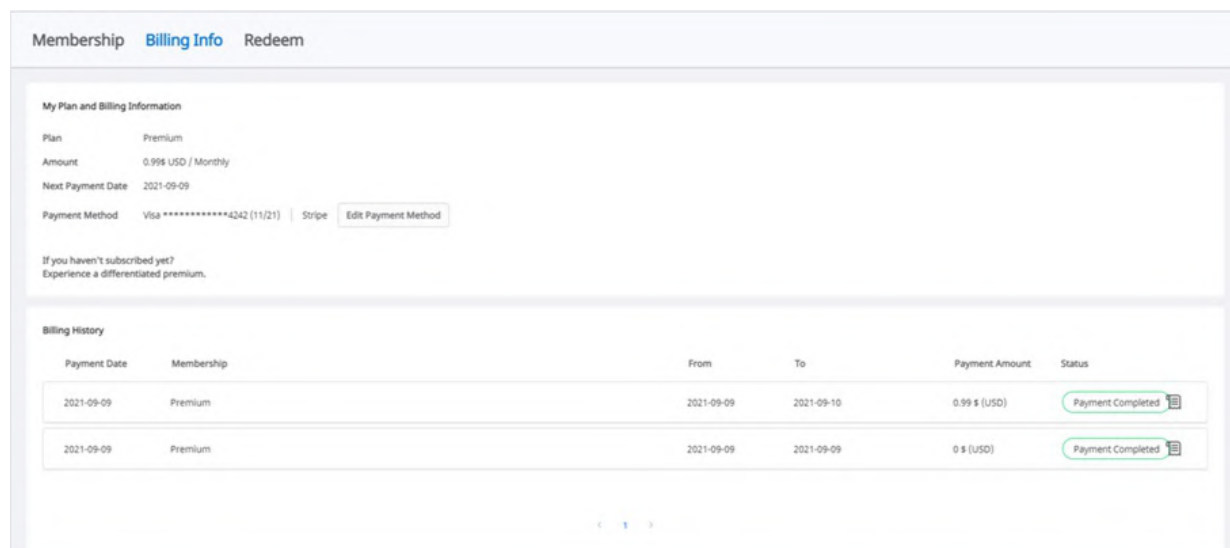

결제 방법 추가

1. "결제 방식 변경"을 클릭합니다

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99 USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa **** *4342 (11/21) | Stripe **Edit Payment Method**

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. "Add payment method"를 클릭합니다.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. 새로운 결제 정보를 입력한 후 "Add"를 클릭합니다.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. 새롭게 추가한 정보가 기본 결제 방법으로 설정되고, 다음 결제부터 새로운 결제 방법으로 결제가 진행됩니다.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



VISA **** 4242

Expires 11/2021

...

+ Add payment method

결제 방법 변경

1. Billing 창에서 변경하려는 결제 방법 우측의 "..." 아이콘을 클릭합니다.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default

Expires 11/2021

X

VISA **** 4242

Expires 11/2021

...

+ Add payment method

2. "Make default"를 클릭하면 기본 결제 방법이 변경됩니다.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

리덤 코드

프로모션을 통해 발급된 리덤 코드를 등록합니다. 리덤 코드를 이용해 프리미엄 멤버십을 사용할 수 있습니다.

리덤 코드 등록 및 활성화하기

1. 리덤 코드를 입력하고 "등록"을 클릭합니다.

2. 내용을 읽고 “등록하기” 또는 “적용하기”를 클릭합니다.
 - 등록하기: 리덤 코드를 등록합니다. 등록된 리덤 코드는 이후에 활성화하여 사용할 수 있습니다.
 - 적용하기: 리덤 코드를 등록하고 활성화합니다. 프로모션이 즉시 적용됩니다.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

리덤 코드 활성화하기

여러 개의 리덤 코드가 등록되어 있는 경우, 원하는 리덤 코드를 활성화하여 사용할 수 있습니다.

1. 사용하고자 하는 리덤 코드의 "Activate" 버튼을 클릭합니다.
 - "Activated" 상태의 리덤 코드가 없는 경우, 선택한 리덤 코드가 바로 활성화됩니다.
 - 이미 활성화된 리덤 코드가 존재하는 경우, 선택한 리덤 코드는 "Waiting" 상태로 변경됩니다.
활성화되어있는 리덤 코드가 만료되면, "Waiting" 상태인 리덤 코드가 자동으로 활성화 됩니다.

참고

리덤 코드는 하나만 활성화 할 수 있고, "Waiting" 상태의 리덤 코드도 하나만 허용됩니다.

My Info

내 정보

계정 정보에서 회원 가입 시 입력한 가입 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 우측의 그룹 정보에서는 소속된 치과 또는 기공소의 회원 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a MEDIT logo with a "2022 Trusted Lab Partner of MEDIT" badge. The form includes fields for Email Address (seolah.jeon@medit.com), Password (with a "Change Password" button), and Name (seolah.jeon_dev_admin). There are also dropdown menus for Language (English) and Country/Region (Korea, Republic of), each with a "Change" button. A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

내 치과/내 기공소 (관리자 계정만 해당)

로그인한 사용자가 소속된 치과 또는 기공소에 대한 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 이 항목은 관리자 계정으로만 확인할 수 있습니다.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

내 스캐너

계정에 연결되었던 장비의 정보를 확인할 수 있습니다.

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah.jeon

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

기타 메뉴

공지사항 및 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알람을 표시합니다.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

관련 웹사이트

Medit Link 사용에 관한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. Medit Academy YouTube, Medit 헬프 센터 등으로 연결하여 Medit 사용에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

프로그램 다운로드

최신 버전의 프로그램 인스톨러를 다운로드합니다. 제품 구매 시 제공한 인스톨러를 분실하거나 구버전의 인스톨러를 보유한 경우, 최신 버전의 제품을 다운로드 받을 수 있습니다.

 참고

프로그램 업데이트는 인터넷이 연결되면 자동으로 이루어집니다.

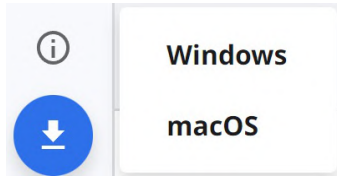

화면 구성

1	타이틀 바	자세한 정보는 Medit Link App > 타이틀 바 를 참고하세요.
2	메뉴	자세한 정보는 Medit Link App > 메뉴 를 참고하세요.
3	도구 및 기능	자세한 정보는 Medit Link App > 파일 뷰어 및 Medit Link App > 보기 옵션 을 참고하세요.
4	케이스 리스트	자세한 정보는 Medit Link App > 필터링 및 검색 을 참고하세요.

아래 표에서 치과 및 기공소 계정의 유형 및 권한에 따라 사용할 수 있는 메뉴를 확인할 수 있습니다.

계정 유형		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
치과 계정	관리자	O	O	O	X	X	O	O	O
	멤버	O	O	O	X	X	O	O * 복구만 가능	O
랩 계정	관리자	X	X	X	O	O	O	O	O
	회원	X	X	X	O	O	O	O * 복구만 가능	O

타이틀 바

타이틀 바에서는 계정 정보, 알림, 공지 사항 및 업데이트, 네트워크 상태로 바로 이동할 수 있는 아이콘을 제공합니다.



내 정보

프로필 이미지, 치과 또는 기공소 이름, 이메일 주소, 사용자 이름 등 기본적인 사용자 정보를 표시합니다.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

알림

파트너십, 주문, 작업 프로세스 관련 알림을 제공합니다.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

1	읽지 않은 알림만 보려면 이 박스를 클릭하세요.
2	알림을 선택하면 해당 케이스 또는 웹 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

공지사항 및 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알림을 표시합니다.

설정

설정 창에서 프로그램에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
 ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

각 설정 항목에 대한 상세한 설명은 [Medit Link App > 설정](#)을 참고하세요.

네트워크 상태

Medit Link는 네트워크와 연결되어 있을 때 모든 기능을 원활하게 사용할 수 있습니다.

네트워크 연결 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 타이틀 바에 네트워크 상태가 아이콘으로 표시됩니다.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

네트워크 상태가 양호하지 않으면 다음과 같은 제약이 발생합니다.

- 주문, 케이스 생성, Case Talk를 통한 공유, 클라우드 동기화 등 일부 서비스의 사용이 제한됩니다.
- 네트워크 환경의 영향으로 서비스의 성능이 전체적으로 떨어질 수 있습니다.

이러한 경우 오프라인 모드를 이용해 기본적인 작업을 먼저 진행하고, 네트워크 사용이 필요한 기능은 네트워크 연결 후 사용할 수 있습니다.

참고

네트워크 안테나는 해당 지역과 AWS(Amazon Web Service) 사이의 응답 속도를 나타냅니다. 이는 네트워크 속도를 의미하는 것이 아니며, 네트워크 속도가 충분히 빠르더라도 네트워크 상태는 “좋지 않음”으로 표시될 수 있습니다.

네트워크 자원을 다른 프로세스에서 사용하고 있는 경우에도 안테나가 “좋지 않음”으로 표시될 수 있고 Medit Link 성능이 전반적으로 떨어질 수 있습니다. 이런 경우 다른 프로세스와 네트워크 자원을 공유하지 마세요.

특히 원본 데이터 업로드 기능은 네트워크 자원이 많이 필요한 프로세스입니다. 네트워크 안테나가 좋지 않음으로 표시되는 경우, 설정 > 스캔 원본파일 업로드 옵션을 끄면 Medit Link의 응답 속도가 더욱 빨라질 수 있습니다.

설정

일반

시스템 전반의 일반 옵션을 설정합니다.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links for 'General', 'Storage Management', 'Set Connected Program', 'Export Options', 'Case Converting Tool', 'Proxy Option', 'About', and 'User Guide'. The main content area displays the following settings:


- Save Folder:** C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/
- Apps Installation Folder:** C:/Program Files/Medit/
- Language Settings:** English
- Teeth Labeling:** FDI (selected) and US (unselected)
- Notification:** Allow Notifications (checked)

At the bottom right, there is an 'Apply' button. At the bottom right of the entire window, there is a 'Close' button.

저장 폴더	Medit Link 및 연동된 프로그램들로부터 생성된 결과물을 저장할 폴더를 지정합니다.	
앱 설치 폴더	App Box에서 제공되는 Medit Apps 및 파트너 앱을 설치하기 위한 경로를 지정합니다.	
언어 설정	사용할 언어를 선택합니다.	
라벨링	치아 번호를 표시할 방법을 선택합니다. FDI와 US 중 선택 가능합니다.	
알림	프로그램 업데이트 관련 공지 사항에 대한 알림 수신 여부를 설정합니다.	
원본 데이터 업로드	원본 데이터를 자동으로 클라우드에 업로드 할지 여부를 결정합니다. 클라우드에 업로드 된 원본 데이터로 데이터 백업이 가능하며 다른 PC에서 동일 계정으로 Medit Link를 사용할 때 원활한 스캔 작업을 할 수 있습니다. Medit Scan for Clinics에서 획득한 데이터만 클라우드에 백업할 수 있습니다.	
빠른 스캔	품 정보를 입력하지 않고 Medit Scan for Clinics를 실행한 경우 다음 스캔 단계가 표시됩니다. • 상악 진단 모델 • 하악 진단 모델 • 안면 스캔	
보기 옵션	고급 렌더링	3D 모델을 보다 사실감 있게 표현합니다.
	색상 조정	화면에 보여지는 모델의 밝기를 설정합니다. 내보내기한 데이터를 다른 프로그램에서 확인하는 경우, 렌더링 방식의 차이로 Medit Link의 결과와 다르게 보일 수 있습니다.
Medit 사용자 경험 개선 프로그램	Medit 사용자 경험 개선 프로그램에 참여합니다. • 수집한 정보는 제품 및 서비스의 품질 향상을 위해 사용합니다. • 개인 정보와 관련된 어떠한 정보도 수집하지 않습니다.	
로그인 후 기본 페이지	프로그램 시작 시 초기 화면에 표시할 기본 메뉴를 선택합니다. • 치과 계정은 Patient와 Case Box 중에 기본 메뉴를 선택할 수 있습니다. • 기공소 계정은 In Box와 Work Box 중에 기본 메뉴를 선택할 수 있습니다.	

저장소 관리

저장소 사용 현황을 확인하고 관리하기 위한 기능을 제공합니다.

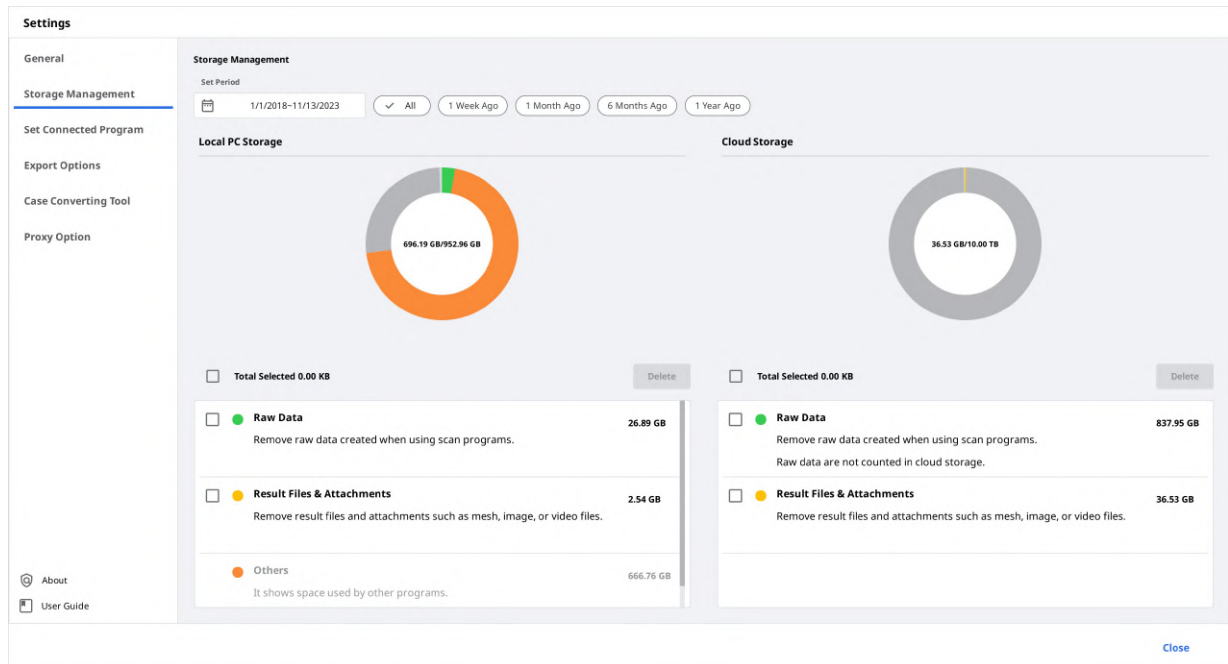

기간 설정

기간을 설정합니다. 설정한 기간 내의 데이터가 삭제 대상이 됩니다

- 전체: 모든 데이터를 표시합니다.
- 일주일 전: 생성 후 1주일이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 1개월 전: 생성 후 1개월이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 6개월 전: 생성 후 6개월이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 1년 전: 생성 후 1년이 경과한 데이터를 표시합니다.

컴퓨터 저장 공간

로컬 PC의 스토리지 용량을 확인하고 관리하는 기능을 제공합니다.

원본 데이터	로컬 PC로부터 원본 데이터를 삭제합니다. 이미 클라우드에 업로드 한 데이터는 언제든지 다운로드 하여 사용할 수 있습니다.
결과 및 첨부 파일	로컬 PC로부터 결과 및 첨부 데이터를 삭제합니다. 이미 클라우드에 업로드 한 데이터는 언제든지 다운로드 하여 사용할 수 있습니다,
기타	윈도우 또는 Medit Link 이외의 프로그램에서 사용하는 용량을 표시합니다. 로컬 PC의 스토리지 용량을 확인하기 위한 용도입니다. Medit Link 에서 해당 데이터를 직접 삭제할 수 없습니다.
삭제	선택한 데이터를 로컬 PC에서 삭제합니다.


클라우드 저장소

클라우드 스토리지의 용량을 확인하고 관리하는 기능을 제공합니다.

원본 데이터	원본 데이터는 클라우드 스토리지 용량을 사용하지 않아, 그래프에 표시되지 않습니다. 개인 정보 보호 등의 이유로 클라우드 스토리지에서 원본 데이터를 관리하고 싶은 경우 사용할 수 있습니다.
결과 파일 및 첨부 파일	결과 및 첨부 파일은 클라우드 스토리지의 용량을 사용합니다. 클라우드 스토리지 용량이 가득 찼을 경우, 사용하지 않는 데이터를 삭제하여 용량을 확보할 수 있습니다.
저장공간 구매	스탠다드 플랜을 사용하는 경우, 프리미엄 플랜으로 변경하여 저장 용량을 추가 구매할 수 있습니다.
삭제	선택한 데이터를 클라우드로부터 삭제합니다.

연결 프로그램 설정

Medit Link와 연동하여 사용할 프로그램을 관리합니다.

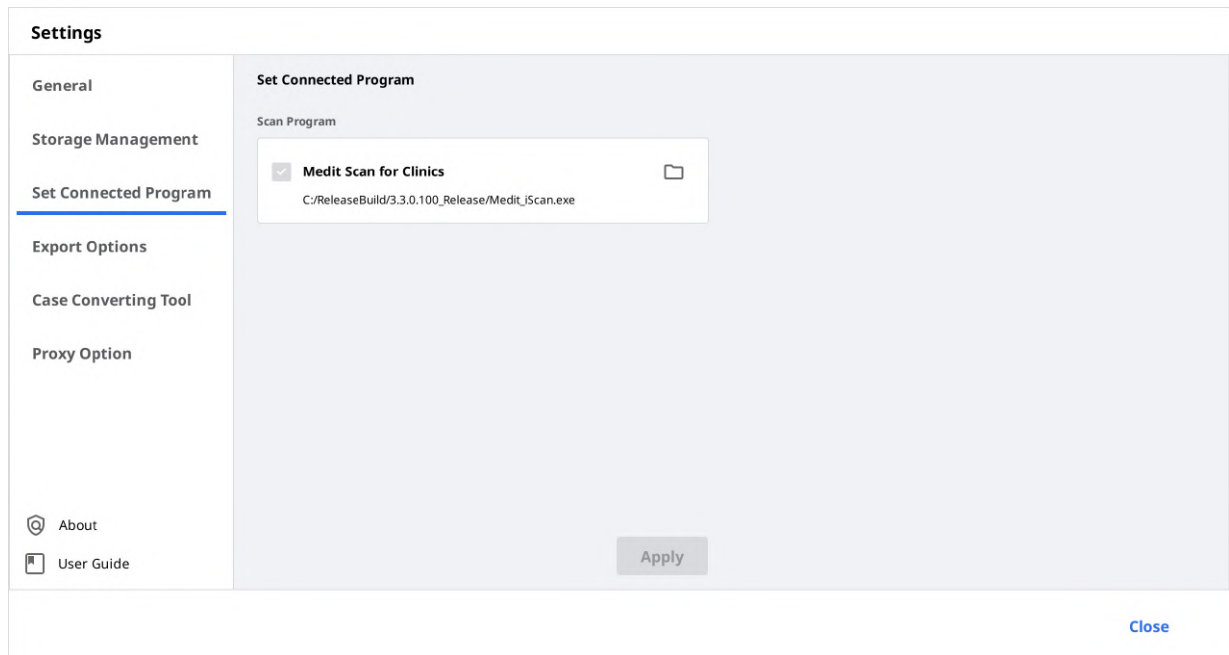

다음 프로그램과 연동이 가능합니다.

	클리닉 계정	랩 계정
스캔 프로그램	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

참고

Medit Link macOS 버전에서는 다음 서비스를 지원하지 않습니다.

- Medit Scan for Labs

내보내기 옵션

내보내기 시 사용할 기본값을 설정합니다.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

CAD 종류	디자인에 사용할 CAD 프로그램을 선택합니다. 각 프로그램의 기준축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.
내보내기 경로	결과물을 저장할 경로를 지정합니다.
메시 형식	결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.
이미지 형식	결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.
압축 & 결합	압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다. 압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다. 결합: 각 악궁 및 악궁에 속하는 결과물을 하나로 병합합니다. 일부 프로그램에서 여러 개의 파일을 불러와 작업할 수 없을 때, 파일을 하나로 병합하여 작업할 수 있습니다.
동일한 폴더 또는 파일이 존재할 때 옵션	내보내기 경로에 동일한 이름의 폴더 또는 파일이 있을 때 옵션을 선택합니다. - 내보내기 할 때 항상 물어봅니다. - 중복된 이름의 파일을 덮어쓰기 합니다. 기존에 저장된 결과물은 저장하지 않습니다. - 새로운 폴더를 만들고 내보내기 합니다.
폴더 이름 규칙	폴더 이름 규칙을 설정합니다. 정의한 이름으로 새로운 폴더를 생성하고, 그 안에 결과 파일을 저장합니다. 아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다. - 치과 계정 생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID - 기공소 계정 생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID
파일 이름 규칙	파일 이름 규칙을 설정합니다. 아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다. - 치과 계정 생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID - 기공소 계정 생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID

케이스 변환 도구


현재 계정의 케이스를 내보내거나 다른 계정에서 내보내기 한 케이스를 가져오기하여, 서로 다른 계정 사이에서 케이스를 이동할 때 케이스 변환 도구를 활용할 수 있습니다.

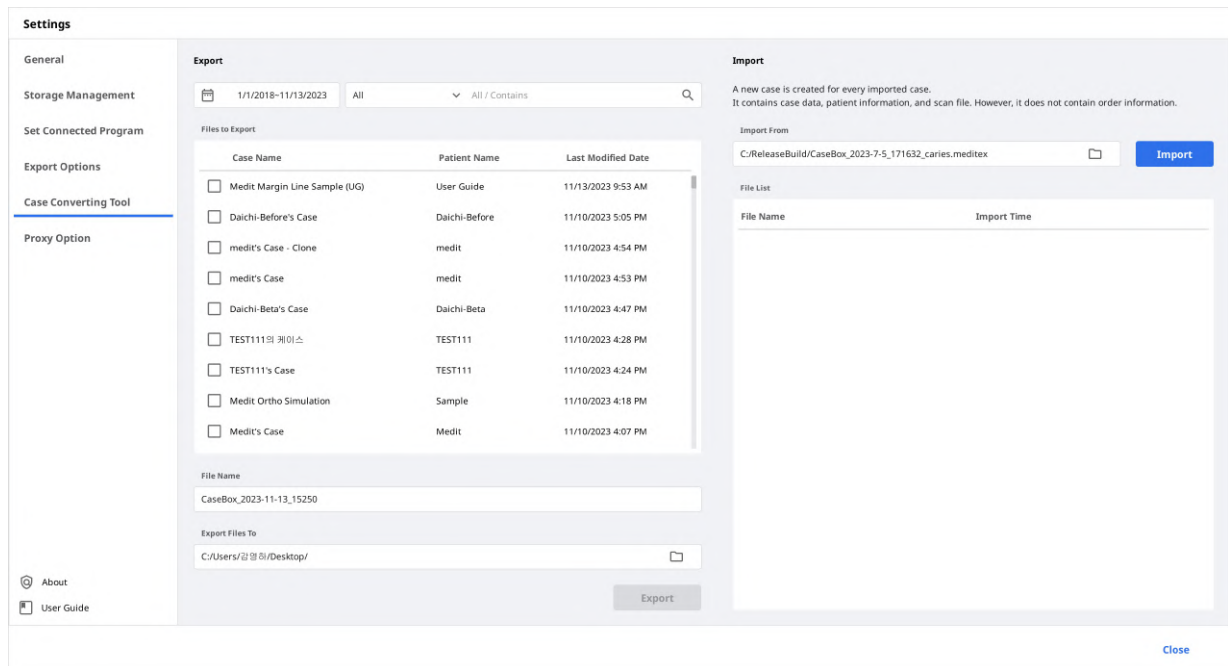


케이스 내보내기

현재 로그인한 계정의 케이스를 로컬 PC로 내보내기 합니다.


1. Medit Link를 열고 창 왼쪽 하단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

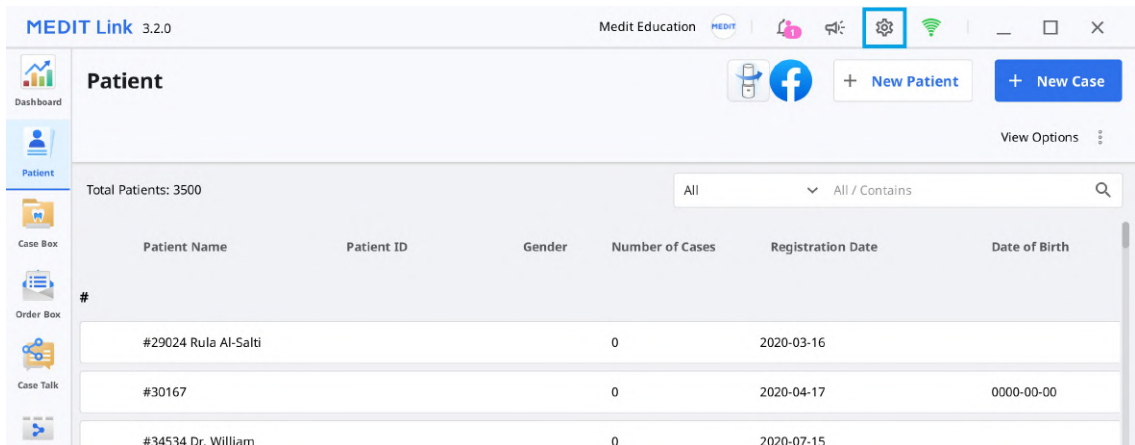


2. 아래 그림과 같이 왼쪽 메뉴에서 "케이스 변환 도구" 옵션을 선택합니다.

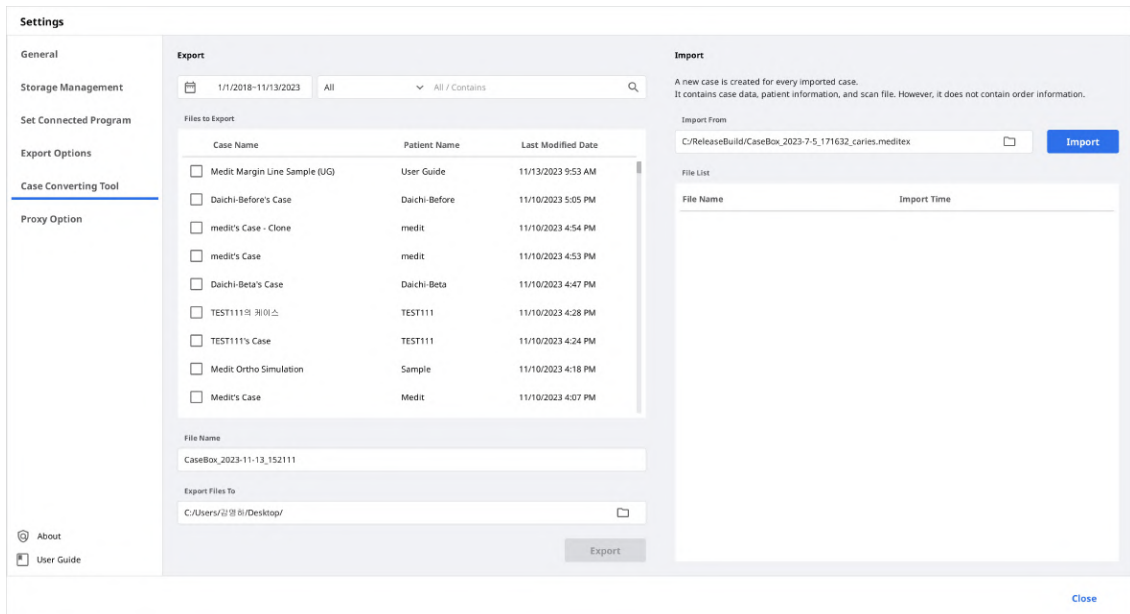

- 필요한 경우 기간을 설정하거나 내보내기할 케이스를 검색할 수 있습니다.

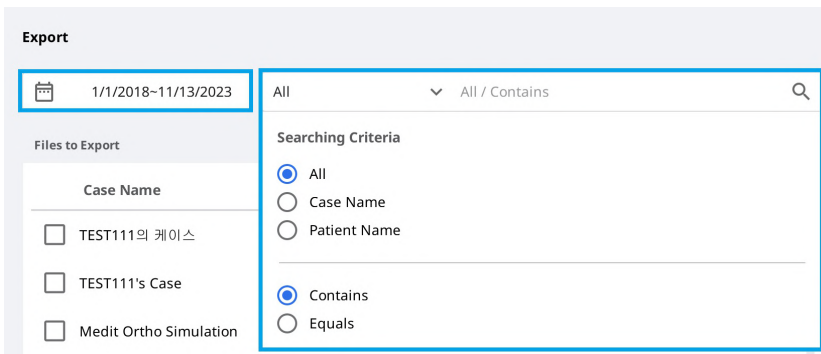

- "파일 목록"에서 내보내기할 케이스를 모두 선택합니다.

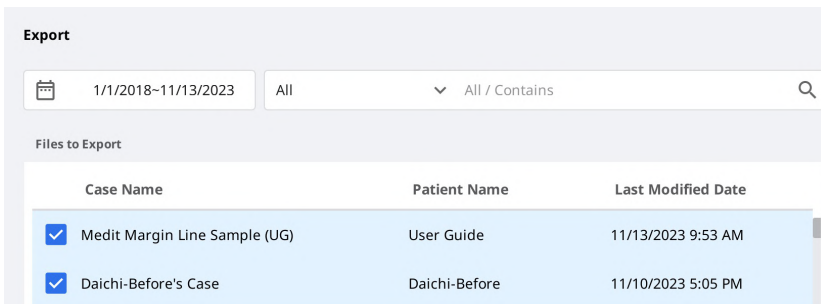

- 파일 이름 영역에 표시되는 케이스 이름을 수정하여 파일 이름을 설정합니다.
- 선택한 케이스를 내보내기할 대상 폴더를 설정합니다.
- "내보내기"를 클릭합니다.
- 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


- 내보내기한 파일은 .meditex 파일 형식으로 저장됩니다.

케이스 가져오기


- Medit Link를 열고 창 왼쪽 하단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

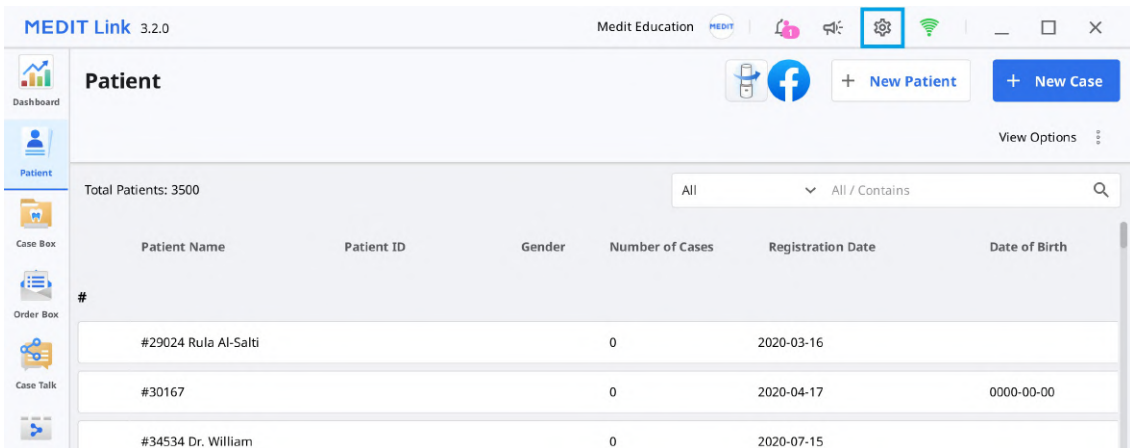


2. 아래 그림과 같이 왼쪽 메뉴에서 "케이스 변환 도구" 옵션을 선택합니다.

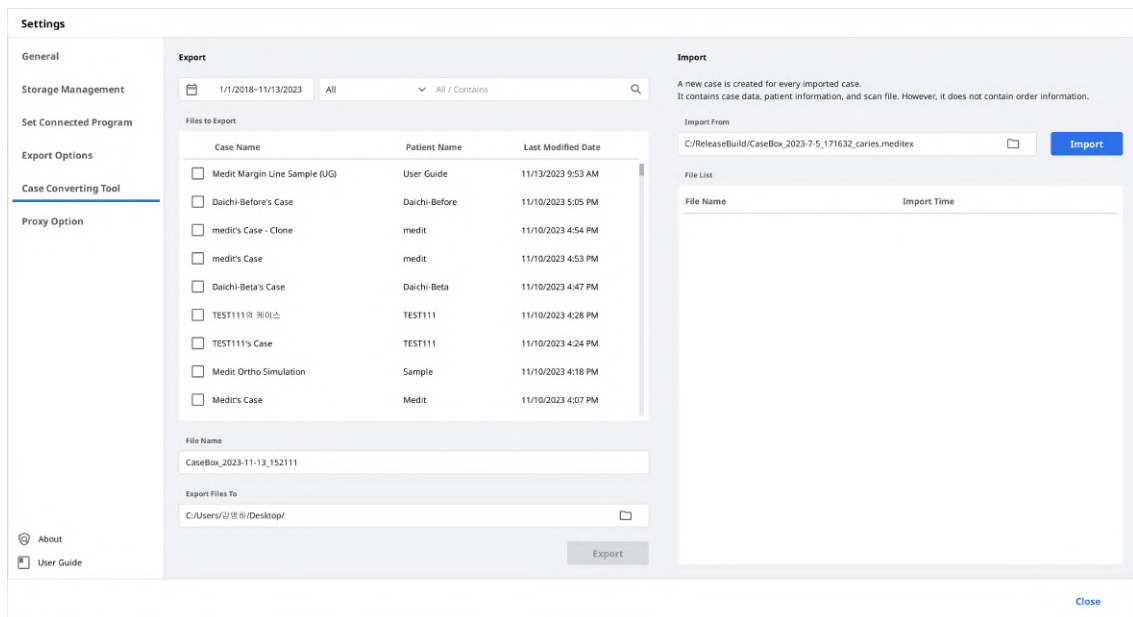

3. 가져오기 섹션에서 폴더 아이콘을 클릭한 후 불러오기할 meditex 파일을 선택합니다.

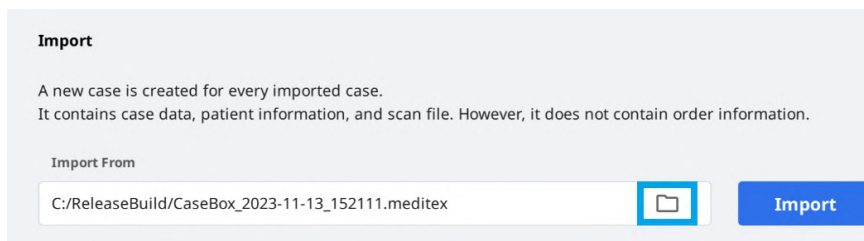

4. "불러오기" 버튼을 클릭하고 아래의 목록에 추가되는 것을 확인합니다.

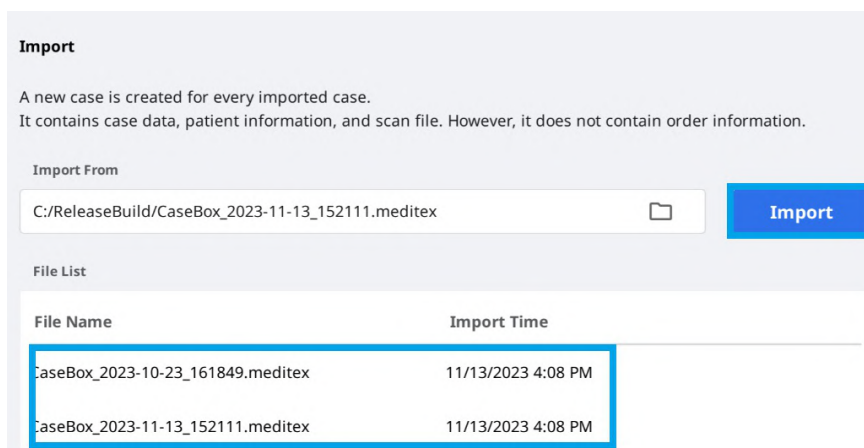

5. 가져오기가 완료되면 해당 케이스는 Case Box (치과 계정), 또는 Work Box (기공소 계정)에 생성됩니다.

프록시 옵션

일부 제한된 네트워크 환경에서 Medit Link를 원활히 사용 가능하도록 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

제품 정보

Medit Link의 상세 정보를 표시합니다.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



Close


유저 가이드

Medit Link의 유저 가이드를 확인합니다.

유저 가이드를 확인하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

Dashboard

App과 Web에서 공통으로 확인할 수 있는 항목으로 Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 시각화 된 그 래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

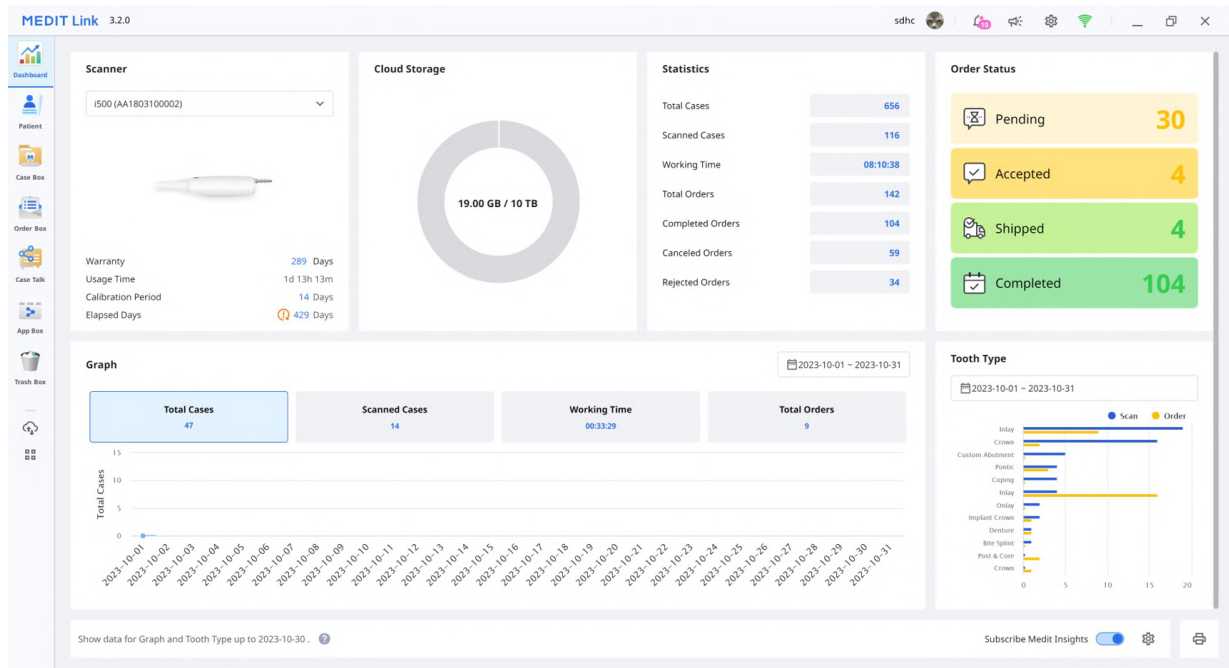

참고

Dashboard와 Medit Insights에 대한 자세한 정보는 [Medit Link Web > Dashboard](#)를 참고하세요.

Patient

Patient 메뉴에서 환자를 추가, 편집, 삭제 또는 병합할 수 있습니다.

The screenshot shows the Patient management interface in Medit Link 3.2.0. It includes a sidebar with navigation icons and a main area with a 'Patient' header and a table of patients. The table has columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. There are buttons for '+ New Patient' and '+ New Case' at the top right. The table lists several patients, including KELLY, Medit Sample, MeditLink 3.0's, Multi Occlusion Normal Case, Michele Rinn, newpatient, ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical, and Order Test - Change Name.

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

새 환자 추가

1. "새 환자"를 클릭하세요.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. 새 환자 창에서 필요한 정보를 입력한 다음 "저장"을 클릭합니다.

환자 삭제

참고

환자에 대한 케이스가 없는 경우에만 환자를 삭제할 수 있습니다.

1. 목록에서 삭제할 환자를 선택합니다.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.G.P	케피논	M	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. "삭제"를 클릭합니다.

환자 병합

환자 정보 및 해당 환자에 속한 케이스를 하나의 환자 정보로 통합하여 관리할 수 있습니다.

1. 목록에서 병합할 환자를 선택합니다.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.G.P	케피논	M	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. "환자 병합"을 클릭합니다.
3. 병합의 기준이 될 환자를 선택합니다.
4. 선택한 환자 정보를 기준으로 모든 케이스가 병합됩니다.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. "적용"을 클릭하여 병합을 진행합니다.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Test Occlusion's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

6 Type Method Material Shade Favorites

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Implant Crown	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	

7 Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

- 1 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.
- 2 스캔 또는 열기 버튼, 주문 버튼, 앱 아이콘 등 주요 기능을 표시합니다.
- 3 품, 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다.
- 4 케이스와 파일을 관리하기 위한 기능을 제공합니다.
- 5 선택한 스캔 프로그램에서 사용할 수 있는 품 정보를 제공합니다.
- 6 치아에 적용할 수 있는 유형/방식/재료/셰이드를 표시합니다.
- 7 선택한 치아 번호 및 유형/방식/재료/셰이드의 조합을 표시합니다.

Case Box/Work Box에서 제공하는 탭

품	파일 뷰어
치아 번호의 유형, 방법, 재료와 스캔 옵션과 같은 스캔 작업을 위한 기본 정보를 입력할 수 있는 UI가 제공됩니다. 입력한 정보는 연동된 스캔 프로그램에 전달되고, 주문 시 거래처에 전달되는 주문 정보로 사용됩니다.	스캔/CAD 작업을 통해 생성된 결과 파일을 확인하기 위한 UI를 제공합니다. 각 프로그램에서 진행하거나 사용자가 첨부한 3D 데이터와 2D 이미지를 효과적으로 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능

Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

	케이스 상태	케이스의 상태를 표시합니다.
	Order Box/In Box로 이동	케이스의 상세 정보를 보기 위해 Box를 이동합니다. (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	케이스 정보	케이스 정보를 확인하고 PDF로 저장하거나 프린트합니다.
	메모 & 태그	케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.
	케이스 이력	케이스의 상세 정보를 제공합니다. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	삭제	케이스를 삭제합니다. 주문 중인 케이스나 오프라인에서 생성된 케이스는 삭제할 수 없습니다.
	복제	케이스를 복제하여 동일한 케이스를 생성합니다. 모든 데이터가 복제된 케이스로 복사됩니다. 동일한 환자의 치료 정보를 복제하여 또 다른 스캔을 진행하거나, 동일한 케이스의 모든 정보/파일을 복제하여 추가로 주문을 진행할 수 있습니다.
	첨부	다양한 형식의 파일을 첨부할 수 있습니다.
	내보내기	스캔 또는 CAD 작업 후 결과 파일을 로컬 PC로 내보내기합니다. 원하는 파일 포맷을 선택하여 내보내기할 수 있습니다. 내보낸 파일은 CAD나 CAM 등 이후 프로세스에 활용할 수 있습니다.
	공유	케이스를 공유할 수 있는 링크를 생성합니다. 공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 Chrome, Firefox, Safari 와 같은 인터넷 브라우저를 이용해 간단하게 3D 데이터를 확인할 수 있습니다. 생성된 링크는 공개 범위를 설정할 수 있습니다. 개인 정보를 보호하기 위해 PIN 코드나 링크 기한 만료일을 설정할 수도 있습니다.
	기술지원 요청	Medit 헬프 센터 페이지로 이동하여 기술 지원을 요청할 수 있습니다.

Order Box/In Box

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

- 1 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.
- 2 주문 수락/취소, 배송/수령 등 주문 관리를 위한 기능을 제공합니다.
- 3 주문 및 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다.
- 4 케이스 상태, 상세 정보, 케이스 정보, 메모 및 태그 등의 기능을 제공합니다.
- 5 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모 등 주문 상세 정보를 표시합니다.
- 6 주문한 상품 정보, 배송 정보를 표시합니다.

Order Box/In Box에서 제공하는 탭

주문	파일 뷰어
주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모, 태그 및 주문한 상품에 대한 정보 등 주문 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.	스캔이나 CAD 등을 통해 생성된 결과 파일을 확인할 수 있습니다. 사용자가 첨부하거나 각 프로그램으로부터 획득한 3D 데이터나 2D 이미지를 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Case Talk

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, Medit Link 구성원에게 공유할 수 있습니다.

Case Talk를 통해 Medit Link의 Web과 App에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

참고

Case Talk 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27, 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

공유한 케이스는 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저에서 확인 가능하여 인터넷 사용이 가능한 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 기기에서 쉽게 3D 스캔 데이터를 확인하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.

App Box

기본으로 제공하는 스캔 프로그램 외에도 다양한 애플리케이션을 제공하고 있습니다. 제공되는 앱을 다운로드하고 설치해서 치료 기기를 만들고, 스캔 데이터를 분석하고, 상담 중 도움을 받거나, 업무 프로세스 간소화에 활용할 수 있습니다.

전체


"전체"탭에서는 Medit에서 자체 개발한 Medit Apps와 함께 다양한 분야의 Medit의 파트너 기업들이 제공하는 3D 프린팅, CAD/CAM 소프트웨어 등을 연동하기 위한 앱 목록을 제공하고 있습니다.

Medit Apps

"Medit Apps" 탭은 Medit에서 자체 개발한 앱을 보여줍니다.

다운로드

"다운로드" 탭에서는 접속한 PC에 설치된 앱 목록과 해당 사용자 계정으로 다운로드 이력이 있는 앱 목록을 모두 보여줍니다.

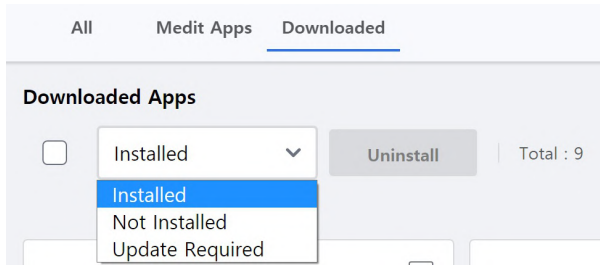

- 설치됨: 현재 접속한 PC에서 설치되어있는 전체 앱 목록을 보여줍니다.
- 미설치: 다른 PC에 설치했던 앱 목록을 확인하고 빠르게 해당 앱들을 설치할 수 있도록 미설치 목록을 제공합니다.
- 업데이트 필요: 해당 PC에 설치한 앱 중에서 업데이트가 필요한 앱들만 확인할 수 있습니다.

Trash Box

Trash Box는 삭제한 케이스를 완전히 삭제하기 전 보관하기 위한 공간입니다. Trash Box에 있는 모든 케이스는 복원하거나 영구 삭제할 수 있습니다.

주의

Trash Box에서 삭제한 데이터는 PC 및 서버로부터 삭제되어 복구할 수 없습니다.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_외출한트 46, 47's Case - Clone - Clone	외출한트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

케이스 동기화 매니저

케이스 동기화 매니저를 이용해 **Medit Link**에서 케이스를 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 여러 케이스를 클라우드에 업로드하거나 PC에 다운로드할 수 있습니다.

[illegible]

업로드

케이스 수 / 선택	업로드가 필요한 전체/선택한 케이스의 수를 표시합니다.
전체 업로드	모든 케이스를 클라우드에 업로드 합니다.
전체 취소	모든 업로드 요청을 취소합니다.
	케이스를 클라우드에 업로드 합니다.
	업로드를 취소합니다.
	업로드를 재시도합니다.

다운로드


케이스 수 / 선택	다운로드가 필요한 전체/선택한 케이스의 수를 표시합니다.
전체 다운로드	모든 케이스를 로컬 PC에 다운로드 합니다.
전체 취소	모든 다운로드 요청을 취소합니다.
	케이스를 로컬 PC에 다운로드 합니다.
	다운로드를 취소합니다.
	다운로드를 재시도합니다.

관련 웹사이트

Medit Link Web에서만 제공하는 My Info, Partners, Membership 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다. Medit Link Web 메뉴에 대한 자세한 내용은 Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#), [My Info](#)를 참고하세요.

Medit의 온라인 쇼핑몰 Medit Shop으로 이동하면 연장 워런티를 구매하거나 스캐너 백팩과 같은 Medit의 굿즈를 구매하실 수 있습니다.

그 외에도 Medit Link 사용에 관한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. Medit 헬프 센터, Medit Academy YouTube 채널, Medit Academy 온라인 교육 플랫폼에 접속하여 다양한 교육 자료와 제품 사용에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

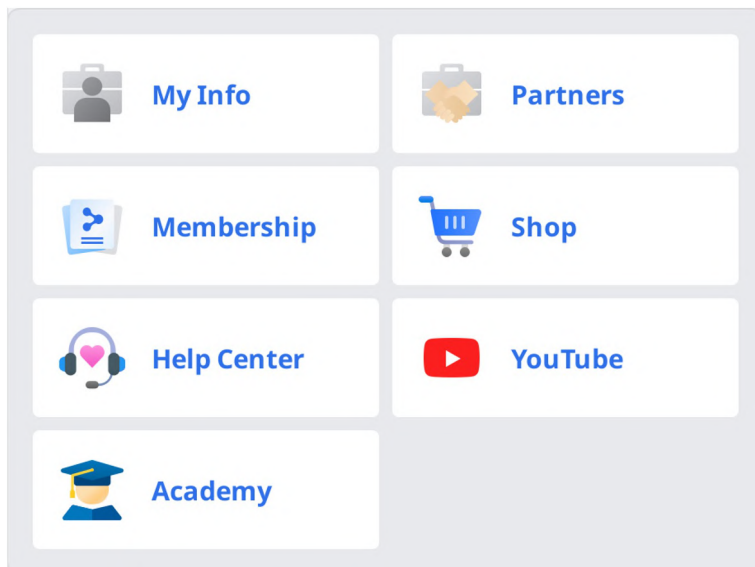

파일 뷰어

Medit Link와 연동된 프로그램으로부터 획득한 데이터, 사용자가 첨부한 데이터 등 다양한 데이터를 그룹화 하여 표시합니다.



데이터 보기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등 기본적인 관리 기능을 제공합니다.

다음 형식의 파일에 대한 미리 보기를 지원합니다.

- 3D 모델: STL, OBJ, PLY
- 2D 이미지: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- 동영상: MKV, MP4, AVI, WMV

데이터 트리

데이터를 속성에 따라 그룹화 하여 표시합니다. 데이터의 보이기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등의 동작을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다.

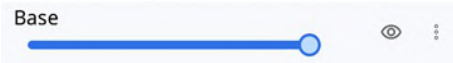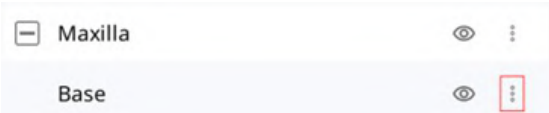	보이기/숨기기	데이터의 보이기/숨기기 상태를 조정할 수 있습니다.
	불투명도	데이터 트리에서 데이터를 클릭하면 다음 그림과 같이 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. “보이기” 상태인 데이터는 슬라이더바를 이용하여 투명도를 조정할 수 있습니다. 
	확장 메뉴	추가로 사용할 수 있는 기능을 표시합니다.  • 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다. • 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다. • 복제: 데이터를 복사하여 Attachment 그룹에 동일한 데이터를 추가합니다. • 내보내기: 선택한 파일을 내보내기 합니다. • 이름 변경: 데이터의 이름을 변경합니다. • 삭제: 데이터를 삭제합니다.

참고

이름 변경 기능은 온라인 모드에서 사용할 수 있습니다.

모델 조정 도구

3D 모델 조정

	이동	모델을 이동합니다.
	회전	모델을 회전합니다.
	확대/축소	모델을 확대/축소 합니다.
	화면 맞춤	모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.
	모델 보기 방법	텍스처 켜기
		텍스처 끄기
	그리드 설정 (mm)	그리드 켜기
		오버레이 그리드 켜기
		그리드 끄기
		스캔 데이터를 색상 정보와 함께 표시합니다.
		스캔 데이터를 색상 정보 없이 표시합니다.
		배경에 그리드를 표시합니다.
		그리드를 모델 위로 표시합니다.
		그리드를 숨깁니다.

2D 이미지 조정


	이전/다음 이미지 보기	이전/다음 이미지를 확인합니다.
	편집	이미지를 편집합니다.
	창 떼어내기/붙이기	이미지 창을 떼어내어 원하는 위치로 조정할 수 있습니다. 떼어낸 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 떼어낸 창을 원래 위치로 복원하면 기본 크기로 되돌아 갑니다.

기능 도구

캡처 & 메모


현재 화면을 이미지로 캡처하고, 캡처한 이미지에 라인을 그리거나, 텍스트 입력을 이용해 메모를 기입합니다.


기입한 메모를 포함하여 파일로 저장할 수 있고, 저장한 이미지는 참고용 자료로 이후 프로세스에 전달할 수 있습니다.

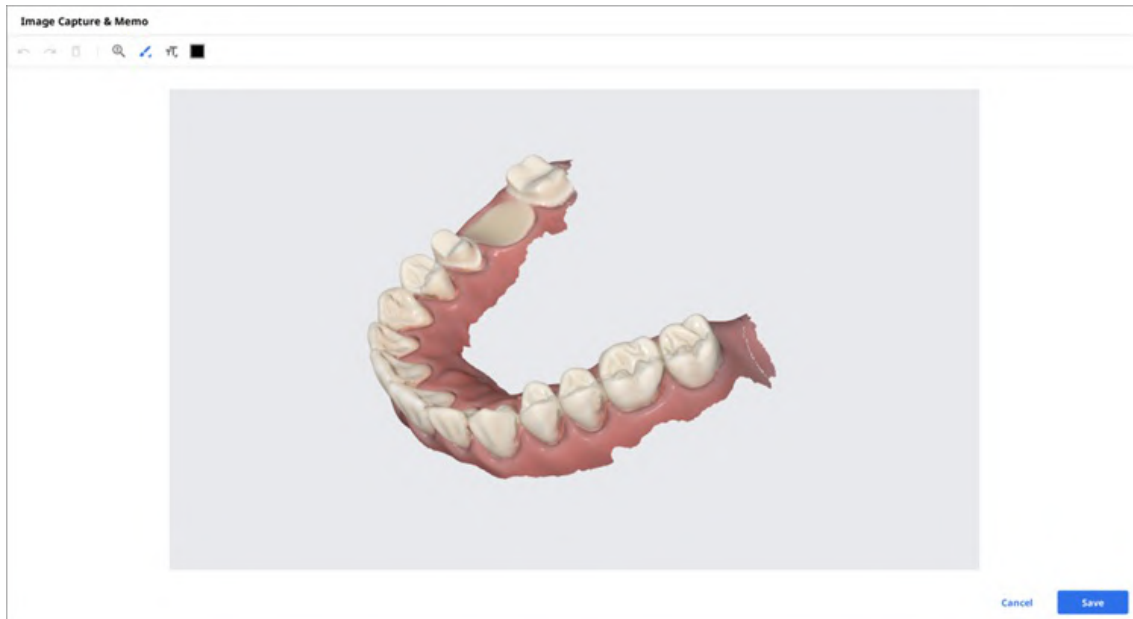

교정용 캡처

현재 보기 방향 및 현재 보기 방향의 상/하/좌/우에서 캡처한 이미지를 저장합니다.

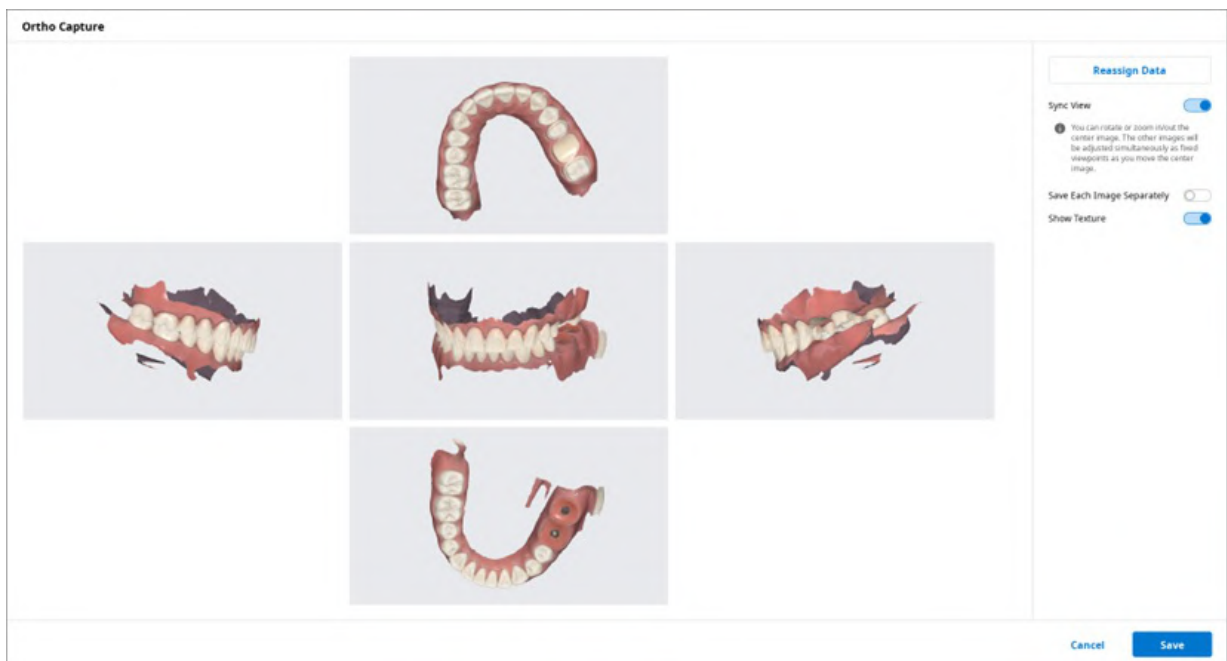

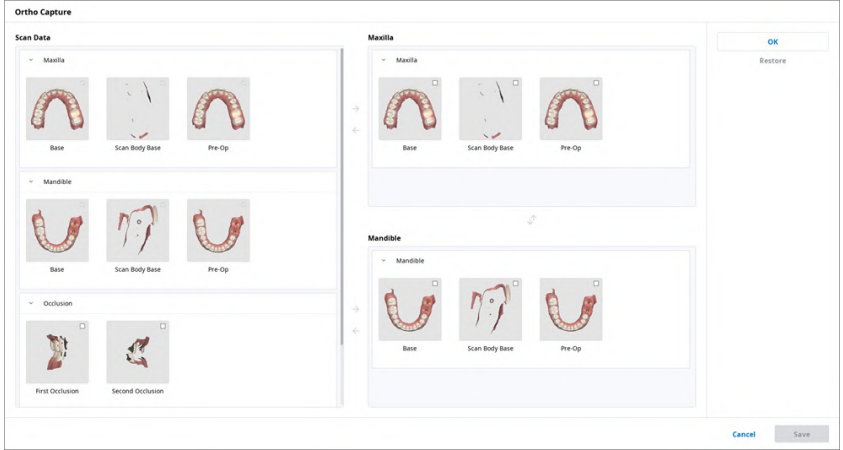카메라 시점 동기화	“카메라 시점 동기화” 옵션이 켜져 있는 경우, 가운데 이미지를 회전/확대/축소할 수 있습니다. 다른 이미지는 가운데 이미지의 방향에 맞춰 자동으로 조정됩니다. “카메라 시점 동기화” 옵션이 꺼져 있는 경우, 모든 이미지를 개별적으로 이동/회전/확대/축소할 수 있습니다.
각 이미지 따로 저장	5장의 이미지를 개별 파일로 저장합니다.
텍스처 보기	모델의 텍스처를 켜거나 끕니다.
데이터 재할당	데이터 재할당 기능을 통해서 Maxilla/Mandible 데이터를 변경할 수 있습니다. 변경된 데이터는 교정용 캡처 결과 이미지의 생성 및 활용에 사용됩니다.  • 스캔 데이터: 해당 케이스의 스캔 데이터가 모두 보여집니다. • Maxilla: Maxilla 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다. • Mandible: Mandible 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다.


빈 영역 채우기

3D 모델 데이터의 빈 영역을 채워 공간이 없는 모델을 생성합니다.



잘라내기


잘라내기 기능을 사용하면 3D 데이터에서 필요하지 않은 부분을 삭제할 수 있습니다.

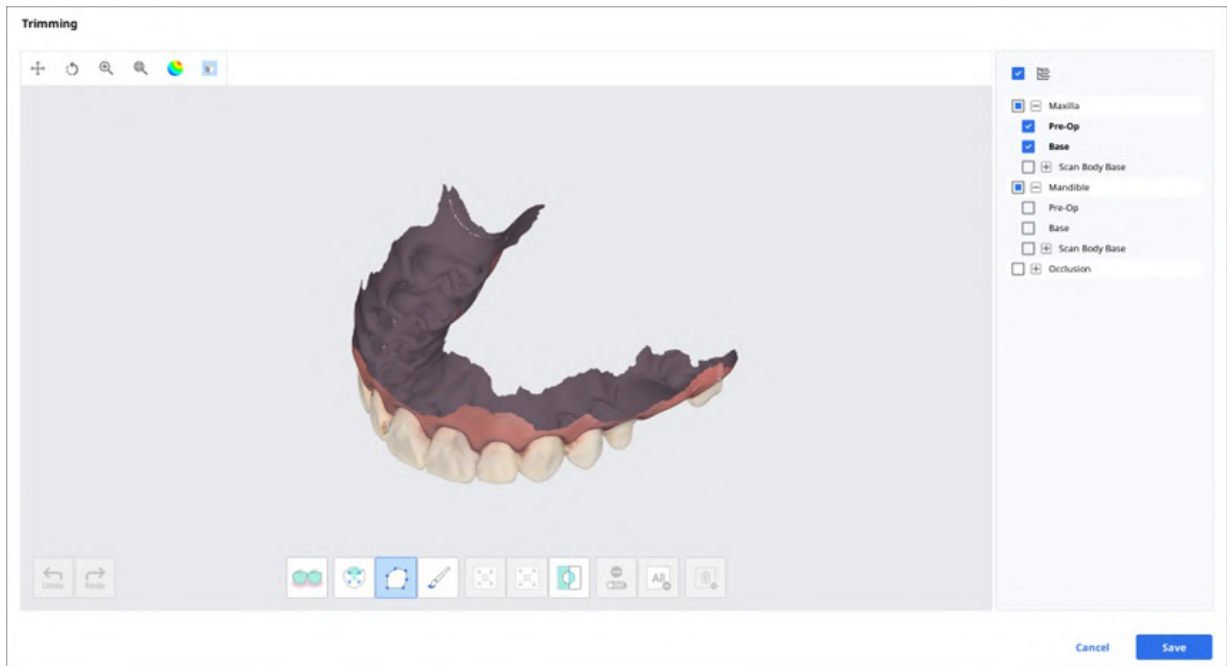

창 하단에 위치한 다양한 도구를 사용하여 선택된 영역의 3D 메시 데이터를 편집할 수 있습니다.

선택 모드		스마트 치아 영역 선택	악궁의 모든 치아 영역을 자동으로 선택합니다. 참고 Medit Scan for Clinics에서 "GPU 사용" 옵션을 켜 상태에서 취득한 스캔 데이터에서만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
		스마트 단일 치아 선택	단일 치아의 영역을 자동으로 선택합니다. 치아 영역을 클릭하거나, 클릭한 상태에서 드래그하여 선택할 수 있습니다.
		다각형 선택	화면에 그린 다각형 내의 데이터를 선택합니다.
		브러시 선택	화면에 브러시로 자유롭게 그린 영역의 데이터를 선택합니다. 데이터의 앞면만 선택이 가능합니다. 브러시는 3가지 크기로 제공됩니다.
선택 영역 조정		선택 영역 축소	버튼을 누를 때마다 선택한 영역이 줄어 듭니다.
		선택 영역 확장	버튼을 누를 때마다 선택한 영역이 확장됩니다.
		선택 영역 반전	선택 영역을 반전합니다.
선택 해제 모드		선택/선택 해제	편집 도구를 사용하여 선택된 영역을 해제합니다.
		모든 선택 영역 해제	모든 영역의 선택을 해제합니다.
		선택된 영역 삭제	선택한 영역의 데이터를 삭제합니다.

1. 다양한 기능을 사용하여 편집할 영역을 선택합니다.

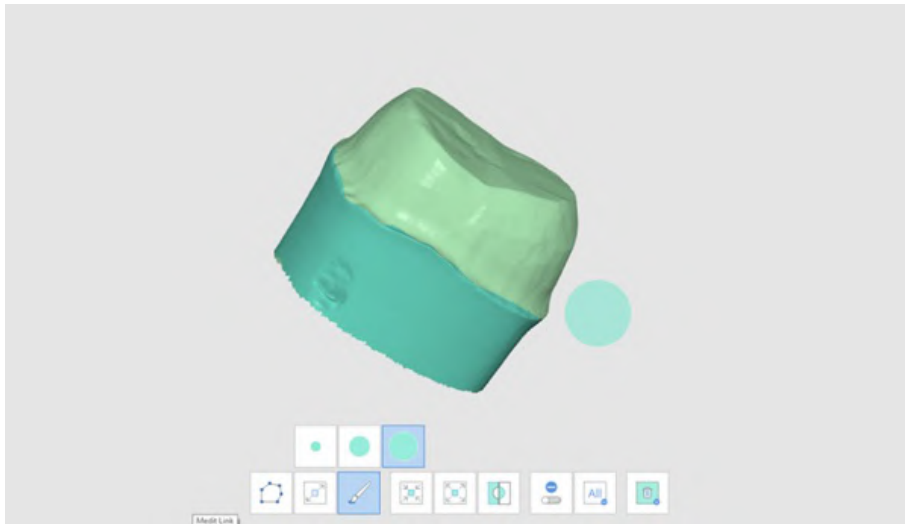


참고


다각형 잘라내기 도구는 화면에 그려진 다각형 모양 내의 모든 데이터(뒷면에 보이지 않는 데이터도 포함)를 선택합니다. 브러시 잘라내기 도구는 보이는 데이터만 선택합니다.

2. 다음 도구를 사용해서 선택 영역을 축소, 확장 또는 반전 시킬 수 있습니다.


- 선택 영역 반전

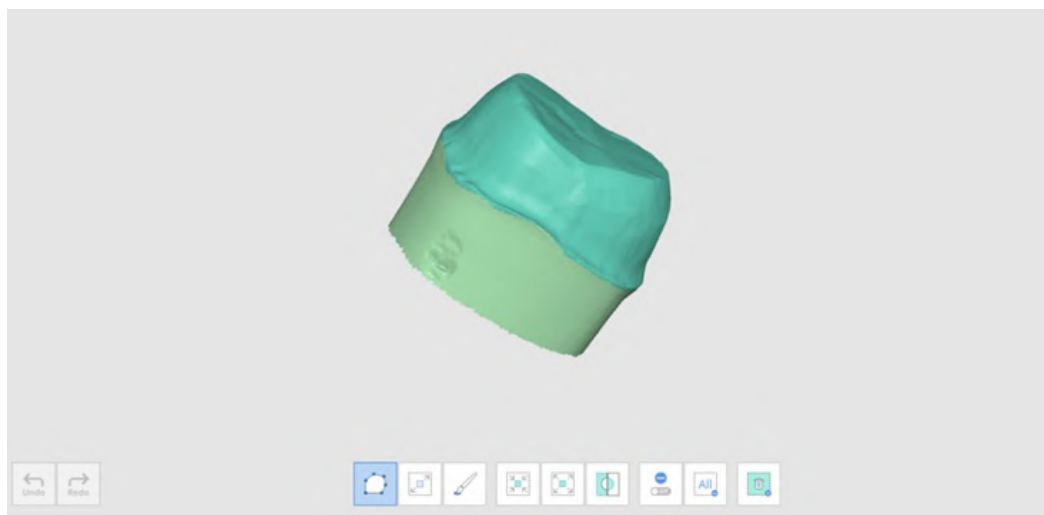

- 선택 영역 축소

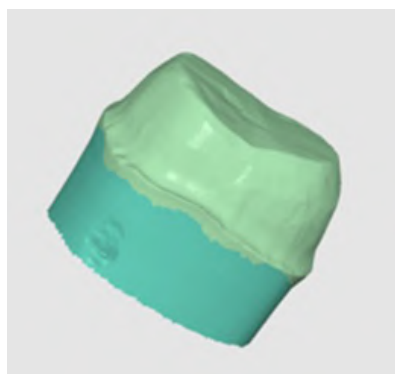


- 선택 영역 확장

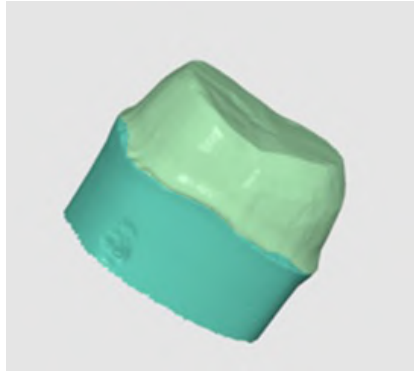






3. "선택된 영역 삭제"를 사용하면 선택 영역을 선택해제 할 수 있습니다.

교합 정렬 최적화

교합 정렬 결과를 최적화합니다. 계산에 사용할 데이터를 선택하고, 선택한 데이터들 사이의 교합 정렬 결과를 조정할 수 있습니다.

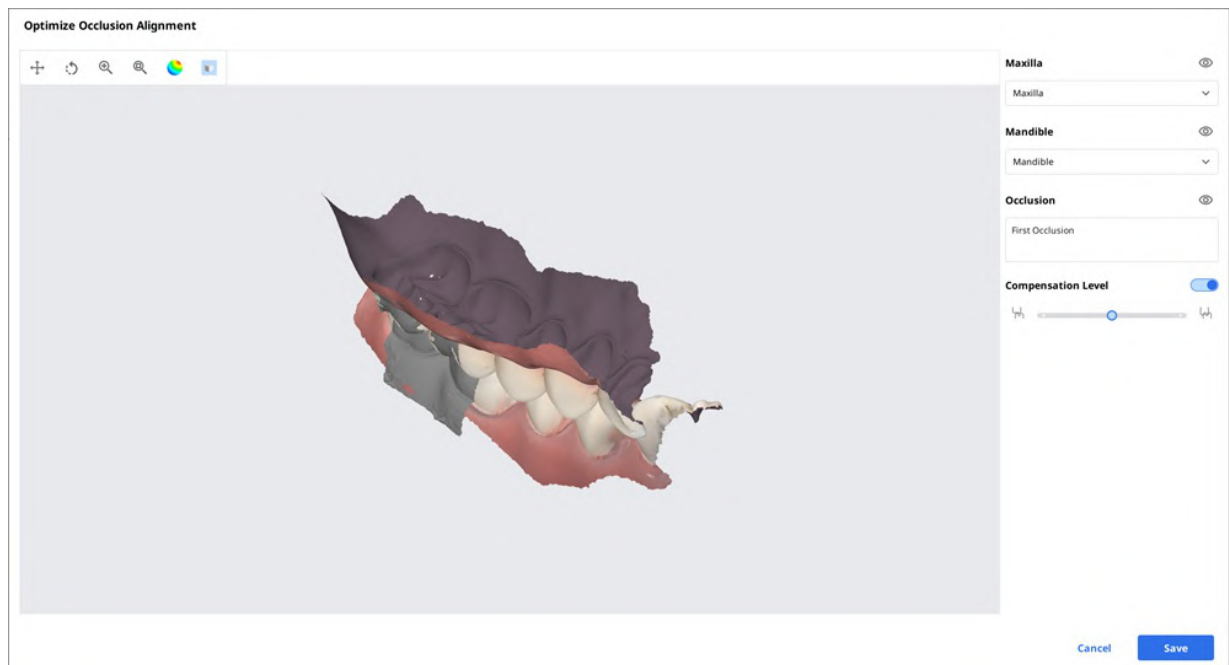


조정 단계

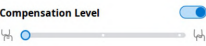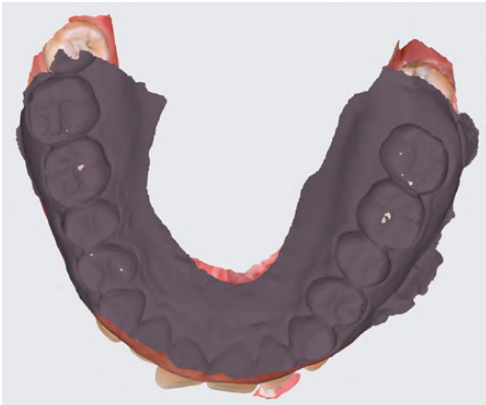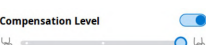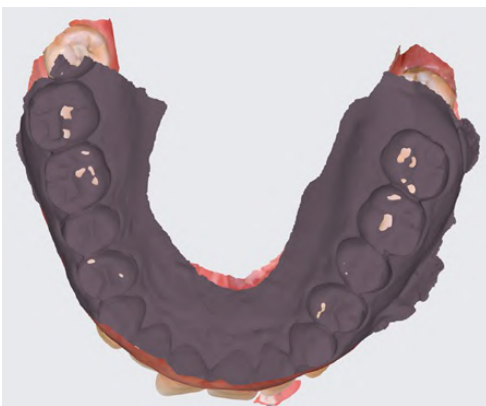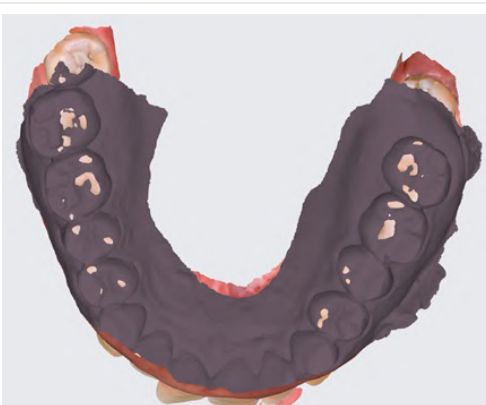약하게	Compensation Level 	
중간	Compensation Level 	
강하게	Compensation Level 	
조정하지 않음	Compensation Level 	

하악 운동

Medit Scan for Clinics에서 기록한 하악의 움직임을 재생하여 환자가 어떤 교합 상태를 가졌는지 확인할 수 있습니다.

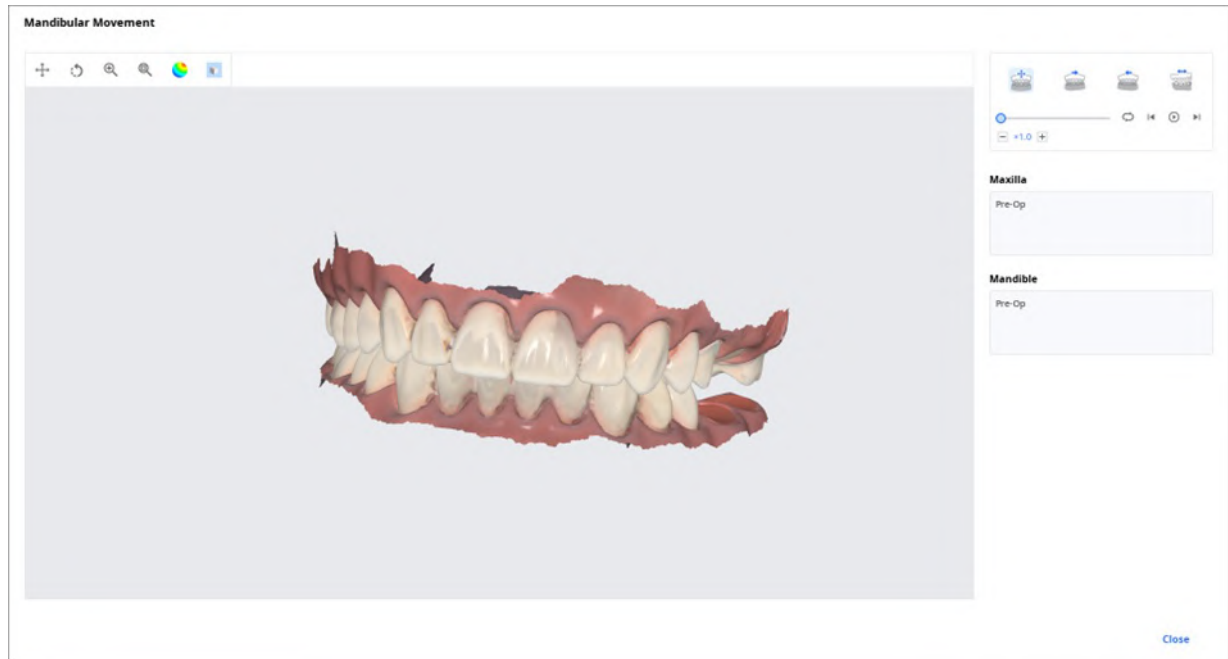

	자유 운동	하악의 자유 운동 영상을 재생합니다.
	좌측방 운동	하악의 좌측방 운동 영상을 재생합니다.
	우측방 운동	하악의 우측방 운동 영상을 재생합니다.
	전방 운동	하악의 전방 운동 영상을 재생합니다.

복수의 교합 결과 관리

Medit Scan 어플리케이션에서 복수의 교합 결과를 생성할 수 있습니다.

이 경우 "파일 뷰어"에서 여러 개의 결과물을 관리할 수 있습니다.

복수의 교합 결과 관리하는 방법


Medit Scan 어플리케이션에서 얻은 복수의 교합 결과물을 화면에 표시합니다.

각 교합 결과물은 이름으로 표시되고 이들 중 하나를 선택할 수 있습니다.

선택한 교합에 대한 결과가 데이터 트리 및 모델 표시 영역에 표시됩니다.



교합 결과물 선택 영역을 닫은 경우 화살표 아이콘을 이용해 교합 결과를 변경할 수 있습니다

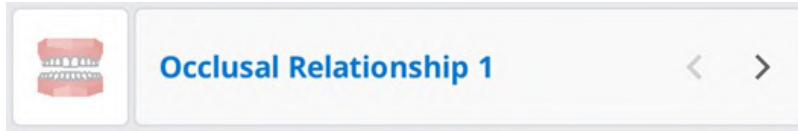

보기 옵션

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 케이스 목록의 화면 표시 방법을 사용자가 원하는대로 변경하여 화면을 구성할 수 있습니다.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

상태 필터

“보기 옵션” 창의 “상태 필터” 항목에서 케이스의 상태를 나타내는 필터링 항목을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 필터는 Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 화면에 표시되지 않습니다.

상태 필터를 활용하여 원하는 케이스를 빠르게 찾을 수 있습니다.

- 보기를 원하는 상태를 클릭하여 해당 상태의 케이스만 표시할 수 있습니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

각 박스에 따라 다음의 상태 필터를 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	상태 필터
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

테이블 항목

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 케이스 리스트에 표시할 항목과 표시하지 않을 항목 선택할 수 있습니다. 또한 표시한 항목은 순서를 변경하거나 및 간격을 조정하여 사용자의 사용 환경에 최적화된 화면 구성이 가능합니다.

각 박스에 따라 다음의 테이블 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	테이블 항목
Patient	환자 이름 / 환자 ID / 성별 / 케이스 개수 / 등록 날짜 / 생년월일
Case Box	상태 / 케이스 이름 / 생년월일 / 품 정보 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명
Order Box	상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜
In Box	상태 / 케이스 이름 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜 / 치과명
Work Box	상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 품 정보 / 수정한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 스캔한 날짜 / 치과명 / 주문한 날짜

목록 유형

Case Box에서 케이스를 표시하는 형태를 변경합니다. 갤러리 뷰 또는 리스트 뷰 두 가지의 보기 방법 중에 하나를 선택합니다.

각 박스에 따라 다음의 목록 유형을 선택할 수 있습니다.

Box	목록 유형
Patient	리스트 뷰
Case Box	리스트 뷰 / 갤러리 뷰
Order Box	목록으로 보기
In Box	목록으로 보기
Work Box	목록으로 보기

그룹화 방법

전체 케이스를 선택한 방법으로 그룹화 하여 표시합니다.

각 박스에 따라 다음의 그룹화 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	그룹화 항목
Case Box	사용하지 않음 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜
Order Box	사용하지 않음 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜
In Box	사용하지 않음 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜
Work Box	사용하지 않음 / 배송 희망 날짜

참고

Patient, Case Talk, Trash Box에서는 그룹화 항목을 제공하지 않습니다.

정렬 방법

다양한 정렬 방법으로 케이스를 표시합니다.

각 박스에서 그룹화 방법에 따라 다음의 정렬 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	그룹화 방법	정렬 항목
Patient	-	환자 이름 / 환자 ID / 생년월일 / 등록 날짜 / 케이스 개수
Case Box	사용하지 않음	환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명
	환자 이름	수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명
	스캔한 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름
	주문한 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 기공소명
Order Box	사용하지 않음	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 기공소명
	스캔한 날짜	환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름
	주문한 날짜	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 기공소명
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명
In Box	사용하지 않음	환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름
	주문한 날짜	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 치과명
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 주문한 날짜 / 치과 이름
Work Box	사용하지 않음	환자 이름 / 수정한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 치과 이름


참고

Case Talk, Trash Box에서는 정렬 항목을 제공하지 않습니다.

필터링 및 검색

환자 검색을 통한 필터링

환자 이름으로 케이스를 필터링하여 표시합니다. 특정 환자의 케이스만 필터링하여 리스트를 구성할 수 있습니다.

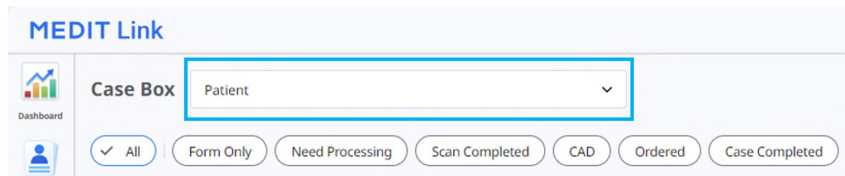


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. 환자 이름을 입력합니다.

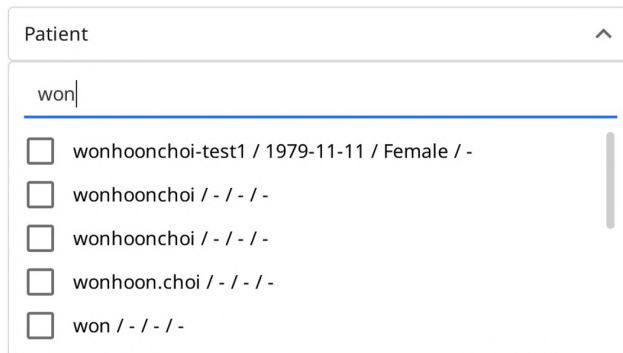


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 아래의 검색 결과에서 환자를 선택합니다.

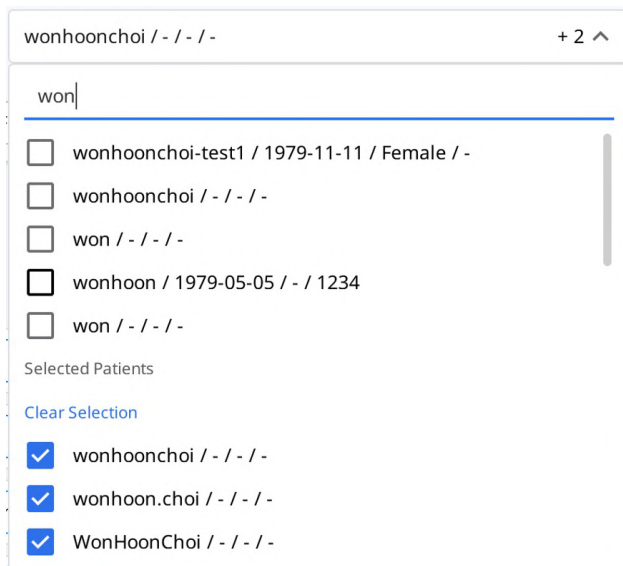

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 선택한 환자들의 케이스만 목록에 보여집니다.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Filters: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed

Total Cases: 20 | 2018-01-01-2023-10-24 | All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

기간 설정을 통한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.




2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

- 전체: 모든 케이스를 표시합니다.
- 직접 설정: 시작 날짜와 종료 날짜를 지정하면 이 기간 내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 오늘: 오늘 수정된 케이스를 표시합니다.
- 어제: 어제 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 7일: 오늘을 제외한 7일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 30일: 오늘을 제외한 30일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 이번 달: 이번 달에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 지난 달: 지난 달에 수정된 케이스를 표시합니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.

고급 검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.

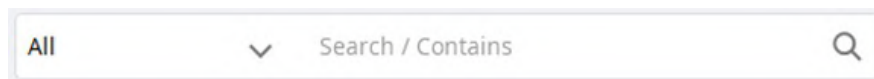

각 Box마다 다음과 같은 검색 옵션을 제공합니다.

Patient	전체, 환자 이름, 환자 ID
Case Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 폼 정보, 기공소명
Order Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소명, 주문 아이디
In Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 주문 아이디
Work Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 폼 정보, 치과명, 주문 아이디
Case Talk	Case Talk 이름(포함), 환자 이름 (일치)
Trash Box (치과 계정)	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 기공소명, 삭제한 사용자
Trash Box (기공소 계정)	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 삭제한 사용자

검색 옵션 선택 뒤에 “전체” 또는 “포함”을 선택하면, 해당 검색 옵션과 일치하는 검색 결과 또는 해당 검색 옵션을 포함한 검색 결과만을 확인할 수 있습니다.

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

케이스 생성/편집/복제/삭제

케이스 생성

Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)


- 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

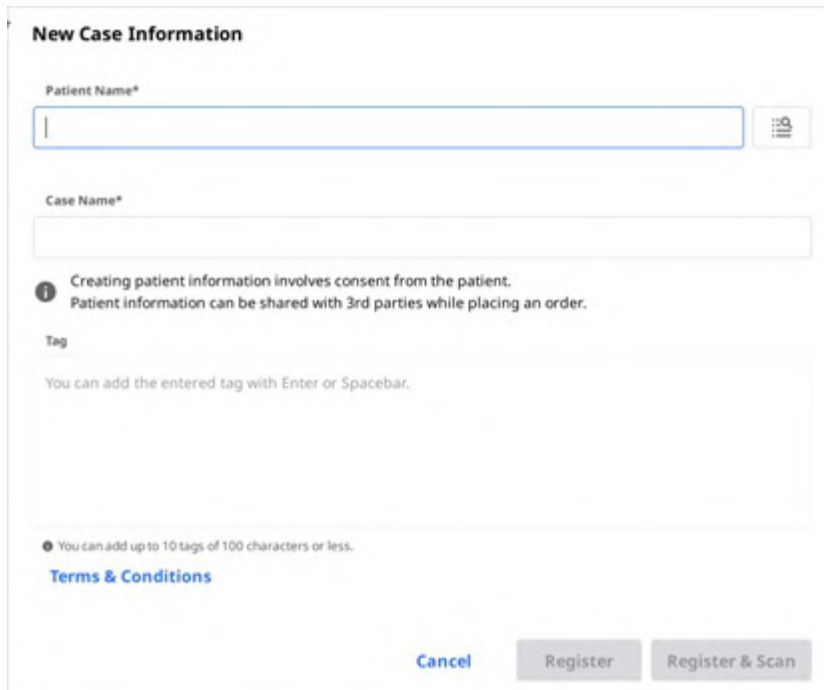

The 'New Case Information' form contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a dropdown icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field with a hint: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a "Terms & Conditions" link, a "Cancel" button, and "Register" and "Register & Scan" buttons.

- 환자 이름, 케이스 이름 등 기본 정보를 입력합니다.
 - 환자 리스트에 없는 이름을 입력하면 새로운 환자가 생성됩니다.
 - 환자 리스트에 있는 이름을 입력하면 리스트에서 선택할 수 있습니다.
 - 환자 목록 버튼을 이용해 기존 등록했던 환자를 선택할 수 있습니다.
- 
- 새로운 환자를 등록 또는 기존 환자의 정보를 편집한 후 선택할 수 있습니다.

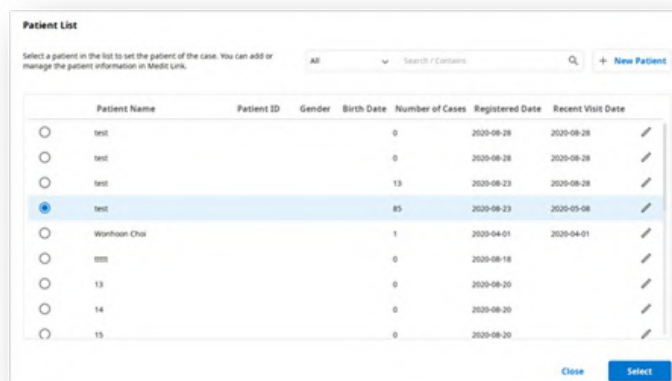

The 'Patient List' dialog box displays a table of existing patients. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. The fourth row is selected.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Buttons: Close, Select


- 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다.
- 케이스 생성 후 바로 품 입력 및 스캔 작업을 진행하고 싶은 경우 "등록&스캔"을 클릭합니다.
 - 등록: Case Box의 메인 페이지로 다시 이동합니다. 여러 환자의 케이스를 등록할 때 유용함

다.

- 등록&스캔: 케이스 등록 후 품 입력 화면으로 이동합니다.

Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)

1. 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

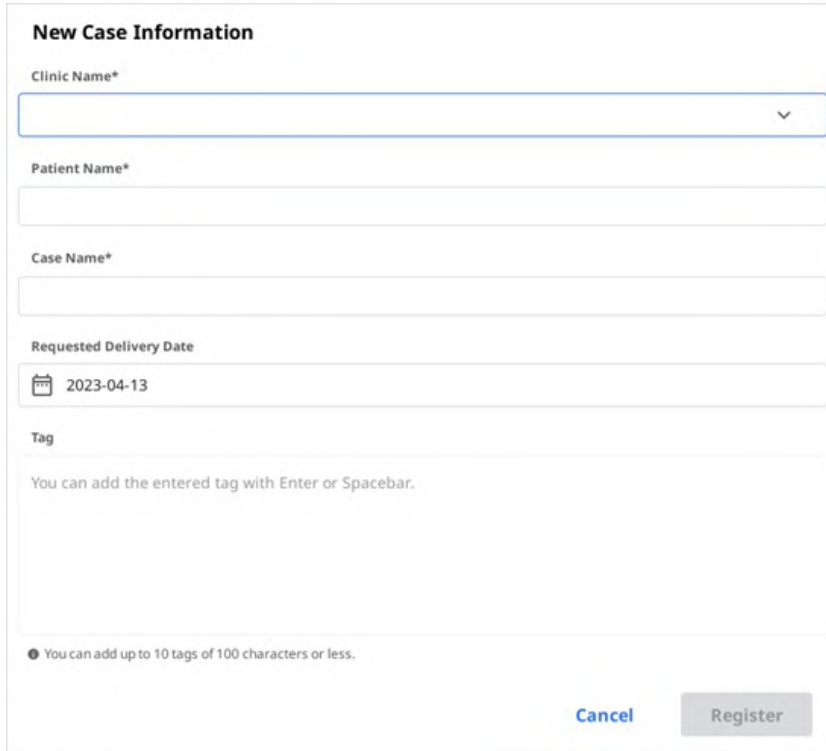

The form titled "New Case Information" contains the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note at the bottom: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons**: "Cancel" and "Register" buttons at the bottom right.

2. 거래처(치과) 이름을 입력 또는 선택합니다.
3. 환자 이름 및 케이스 이름을 입력합니다. 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다. 사용자가 원하는 케이스 이름으로 변경할 수 있습니다.
4. 기공물 제작 완료일을 고려한 배송 예정 날짜를 입력합니다.
5. 케이스 등록 후 초기 페이지로 이동합니다.

케이스 정보 편집

Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)

1. 케이스 이름 우측의 "편집" 아이콘을 클릭합니다.

Edit Case Information

Patient Name*
 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
 Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- 환자 이름 우측의 "검색" 아이콘을 클릭합니다. 환자 이름은 직접 수정할 수 없고, 변경을 원하는 환자를 목록에서 선택할 수 있습니다. 목록에서 환자 정보를 수정할 수 있습니다.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- 변경하고자 하는 환자 이름을 선택합니다.
- 새로운 환자를 추가하려면, "새 환자"를 클릭합니다.
- 편집 버튼을 이용해 기존 환자의 정보를 수정한 후 선택할 수 있습니다.
- 케이스 이름 수정 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 적용합니다.

Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정)

- 케이스 이름 오른쪽의 "편집" 아이콘을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 정보를 수정한 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

참고

In Box로부터 전달받은 케이스의 정보는 수정할 수 없습니다.

케이스 복제

Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 새로운 케이스에 어떤 정보를 복제할 지 선택할 수 있습니다

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. 모든 데이터를 복제하여 새 케이스를 생성합니다. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.
4. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.

Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 모든 데이터를 복제하여 새 케이스를 생성합니다.
3. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.


케이스 삭제

케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)

1. "삭제" 버튼을 클릭합니다.



2. "확인"을 클릭하면 케이스가 삭제됩니다.

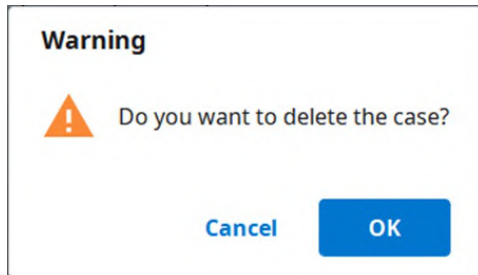

3. 삭제한 케이스는 Trash Box로 이동되고 필요하면 다시 복구할 수 있습니다.

품 정보

선택한 프로그램 및 치료 유형에 맞는 치식 정보를 입력할 수 있습니다.

입력한 정보는 스캔, CAD 및 주문을 위한 기본 정보로 사용됩니다.

Case Box에서 치식 정보 입력

품 탭에서 치식 정보 입력

1. 치아/악궁 중 치료를 원하는 치식 입력 방법을 선택합니다.
2. 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 선택합니다.
 - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
 - 모든 선택 사항은 자동으로 상품 목록으로 등록됩니다.
3. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

Work Box에서 치식 정보 입력

품 탭에서 치식 정보 입력


1. 사용할 스캔 프로그램을 선택합니다.
2. 치아/플렉시블 멀티다이/멀티다이 중 사용할 치식 입력 방법을 선택합니다.
3. 선택한 스캔 프로그램에 따라 서로 다른 치식 입력 방법을 제공합니다.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
치아	O	O
악궁	O	O
플렉시블 멀티다이	X	O
멀티다이	X	O

4. 치료할 치아 번호/악궁/다이 번호를 선택합니다.
5. 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 선택합니다.
 - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
 - 모든 선택 사항은 자동으로 상품 목록으로 등록됩니다.
6. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

브릿지 설정

선택된 치아에 같은 정보가 적용된 경우 브릿지 정보를 입력할 수 있습니다. 동일한 재료의 상품이 인접한 경우 브릿지를 설정할 수 있는 UI가 제공됩니다. 브릿지 아이콘을 클릭하여 브릿지를 설정/해제할 수 있습니다.

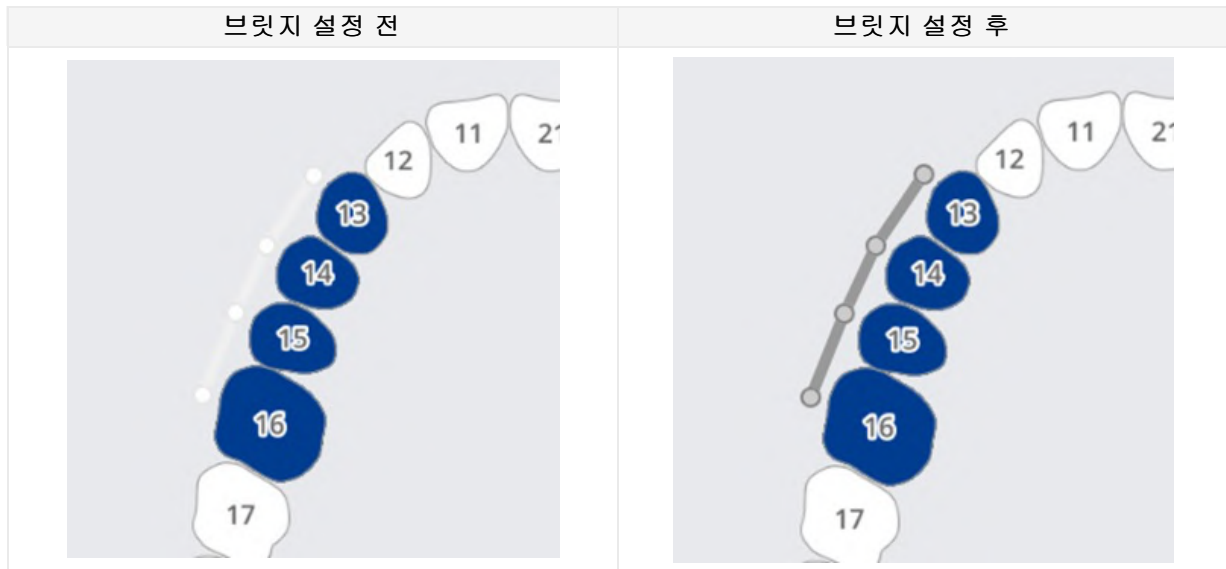

스캔 옵션 설정

연동하는 프로그램에 따라 다음과 같은 스캔 옵션을 제공합니다.

선택한 스캔 옵션은 각 스캔 프로그램에 전달되어 스캔 작업에 필요한 전략을 표시합니다.

Medit Scan for Labs

일반 옵션

	인접치	프렙 치아와 인접치아를 분류/설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.
	대합치	대합치를 자동으로 분류 설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.
	교합기 사용	스캔 프로그램에서 교합기 선택을 위한 옵션을 표시합니다.
	무브먼트 마커	스캔 프로그램에서 Jaw Motion 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.

치아 별 적용 옵션

	스캔바디	스캔 프로그램에서 스캔바디 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.
	진단 모델 스캔	스캔 프로그램에서 진단 모델 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.
	웍스업 스캔	스캔 프로그램에서 웍스업 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.

상품 즐겨 찾기 등록 및 활용

자주 사용하는 상품의 조합을 즐겨 찾기로 등록하여 빠르게 상품을 선택할 수 있습니다.

등록한 즐겨찾기 리스트를 탭플릿으로 관리하고, 내보내기 및 가져오기 기능을 통해 다른 컴퓨터와 공유할 수 있습니다.

즐거찾기 추가

1. 치아 번호를 선택합니다.

2. 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 선택합니다.
 - 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 모두 선택하지 않더라도 즐겨 찾기로 등록할 수 있습니다.
3. 별 아이콘을 클릭합니다.

☆
4. 치아 번호를 제외하고 선택한 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드 조합을 즐겨 찾기 목록에 등록합니다.

즐거 찾기 관리

여러 종류의 템플릿을 등록하고 관리, 공유할 수 있습니다.

추가	새로운 템플릿을 추가합니다.
이름 변경	현재 템플릿의 이름을 변경합니다.
삭제	현재 템플릿을 삭제합니다.
내보 내기	현재 템플릿을 파일로 내보내기 합니다.
가져 오기	템플릿 파일을 가져오기 합니다.

스캔 및 CAD 작업

스캔 작업 진행

입력한 치식 정보를 기반으로 연동된 스캔 프로그램에 정보를 전달하고 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.

1. 치식 정보 및 스캔 옵션을 입력/저장합니다.
2. 화면 우측 상단의 "스캔"을 클릭합니다.

CAD 작업 진행

DentalCAD와 Medit Link를 연동하기 위한 DentalCAD 연동 앱을 제공합니다.

1. App Box에서 DentalCAD Integration 앱을 설치합니다.
2. 케이스 상세정보로 이동하여 킷 런처에서 DentalCAD Integration 앱 아이콘을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 사용자의 PC에 설치된 DentalCAD 앱 경로를 지정합니다.
4. 스캔한 케이스의 상세정보에서 DentalCAD Integration 앱 아이콘을 클릭하면 dentalProject 파일을 생성하기 위한 창이 발생합니다.
5. DentalCAD 품 정보를 입력한 후에 "열기"를 클릭하면 CAD 프로그램이 열립니다.
6. DentalDB Integration 앱을 설치하면 exocad에서 지정한 저장 경로에 CAD 결과물도 자동으로 저장할 수 있습니다. (기공소 계정에 한함)


애드인 앱 활용

앤드인 킷 런처

킷 런처에서 설치된 앱 아이콘이 표시되며, 클릭하면 원하는 앱을 바로 실행할 수 있습니다. 드래그하여 자주 사용하는 앱들을 우선 정렬할 수 있습니다.



앱 런처 관리

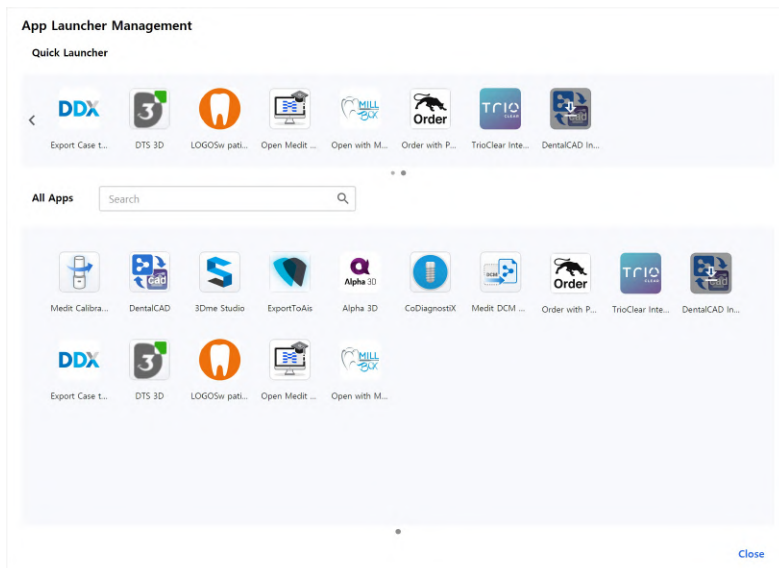

퀵 런처

퀵 런처에 포함할 앱을 지정할 수 있습니다. 앱 아이콘을 드래그하여 순서를 변경할 수 있고, 앱의 성격에 맞게 폴더를 생성하여 관리하는 기능을 제공합니다.

모든 앱

설치했던 모든 앱들이 표시됩니다. 앱 아이콘 우클릭 메뉴에서 해당 앱을 퀵 런처에 추가하는 기능을 제공합니다. 앱 아이콘 우클릭 메뉴에서 앱 실행, 설치, 삭제도 진행할 수 있습니다.

결과 파일 얻기

결과 파일 내보내기

Medit Link는 주문을 통해 쉽게 거래처와 결과물을 공유하는 방법 이외에 내보내기 기능을 이용해 결과물을 원하는 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Image Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export


내보내기 경로	결과물을 저장할 경로를 지정합니다.
폴더 이름	새로운 폴더를 생성하고 결과물을 저장합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 폴더 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다.
파일 이름	결과물의 이름을 정의합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다.
유형	디자인에 사용할 프로그램을 선택합니다. 각 프로그램의 기준 축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.
메시 형식	결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.
이미지 형식	결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.
파일 압축	결과물을 하나의 파일로 압축합니다.
메시 결합	각 악공 및 악공에 속하는 결과물을 하나로 병합합니다. 일부 프로그램에서 여러 개의 파일을 불러와 작업할 수 없을 때, 파일을 하나로 병합하여 작업할 수 있습니다.
모든 교합 관계 내보내기	스캔 프로그램으로부터 복수의 교합 결과가 생성된 경우 모든 교합 관계의 결과를 한 번에 내보내기 할 수 있습니다.
PDF로 케이스 정보 저장	결과 파일과 함께 케이스 정보를 PDF로 저장합니다.

케이스 목록에서 결과 파일 내보내기

Case Box와 Work Box의 케이스 목록 상단의 "내보내기" 옵션에서 여러 케이스의 결과 파일을 동시에 내보낼 수 있습니다.

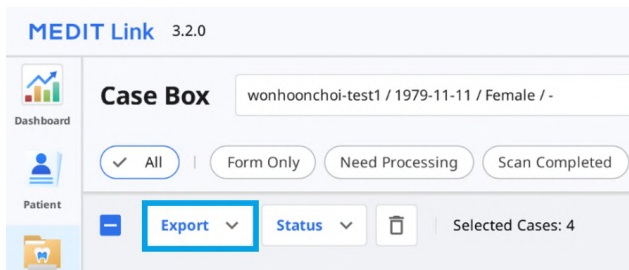

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 목록에서 결과 파일을 내보내기할 케이스를 선택합니다.

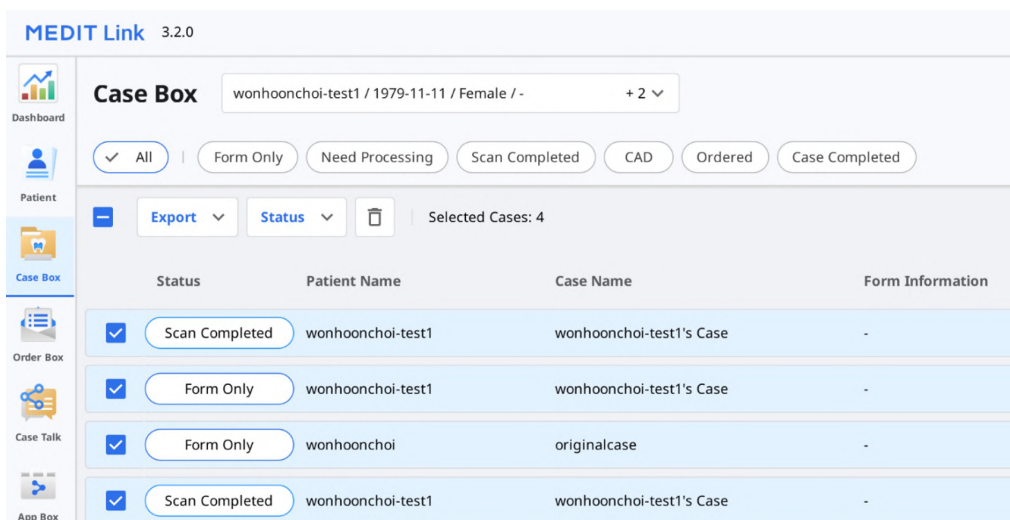

3. "내보내기"를 클릭한 후에 "결과 파일"을 선택합니다.

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

- "옵션" 탭에서 대상 폴더, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

참고

여러 개의 케이스에 포함된 파일을 동시에 내보내는 경우에는 "폴더 이름" 및 "파일 이름"은 수정할 수 없습니다.

폴더 이름과 파일 이름은 설정 > 내보내기 옵션의 "폴더 이름 규칙" 및 "파일 이름 규칙" 항목에서 설정한 내용에 따라 자동으로 생성됩니다.

- "내보내기"를 클릭합니다.
- 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

파일 뷰어에서 결과 파일 내보내기

파일 뷰어 탭의 우측 상단에 위치한 "내보내기" 아이콘을 클릭하면 해당 케이스의 결과 파일을 내보내기 할 수 있습니다.

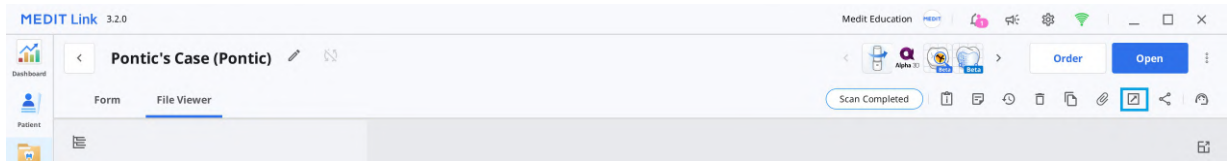

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 케이스 목록에서 원하는 케이스를 클릭합니다.
3. 파일 뷰어 탭 우측 상단의 "내보내기" 아이콘을 클릭합니다.

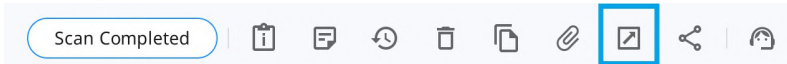

4. "옵션" 탭에서 대상 폴더, 폴더 이름, 파일 이름, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ **PLY**
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format


☐ JPG
☐ JPEG
☒ **PNG**
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

5. "파일 목록" 탭에서 불필요한 파일을 선택해제하여 해당 케이스에 필요한 파일만 선택할 수 있습니다.

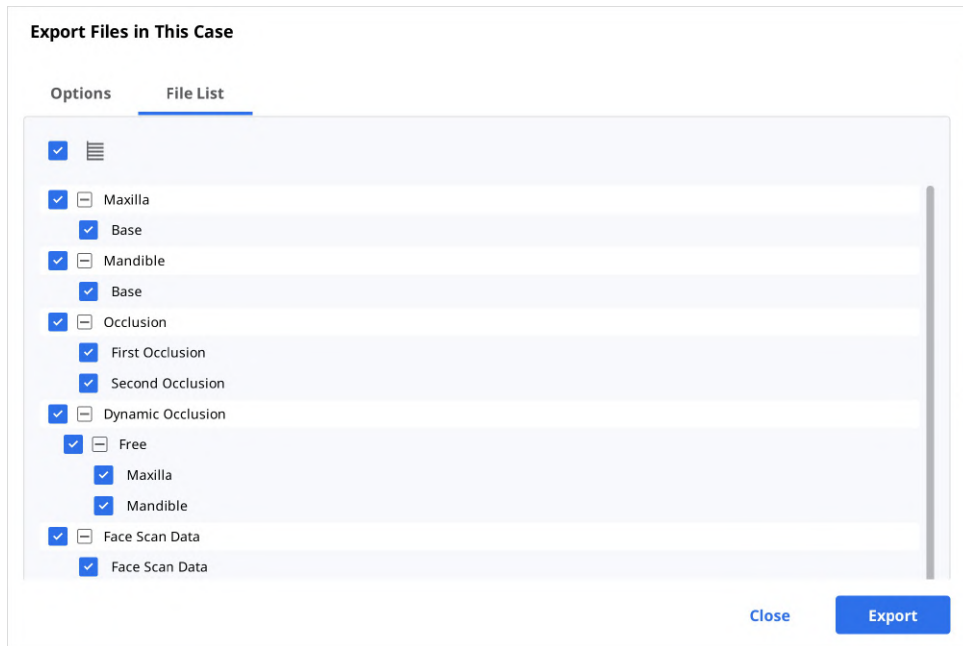


6. "내보내기"를 클릭합니다.
7. 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

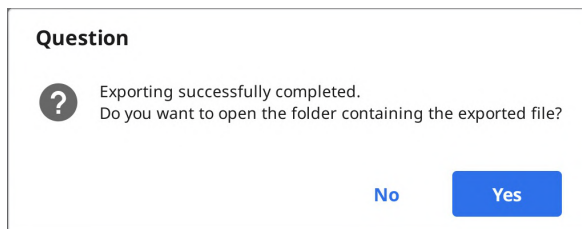


데이터 트리에서 결과 파일 내보내기

파일 뷰어의 확장 메뉴에서 특정 파일 또는 특정 데이터 그룹의 파일을 내보내기 할 수 있습니다.

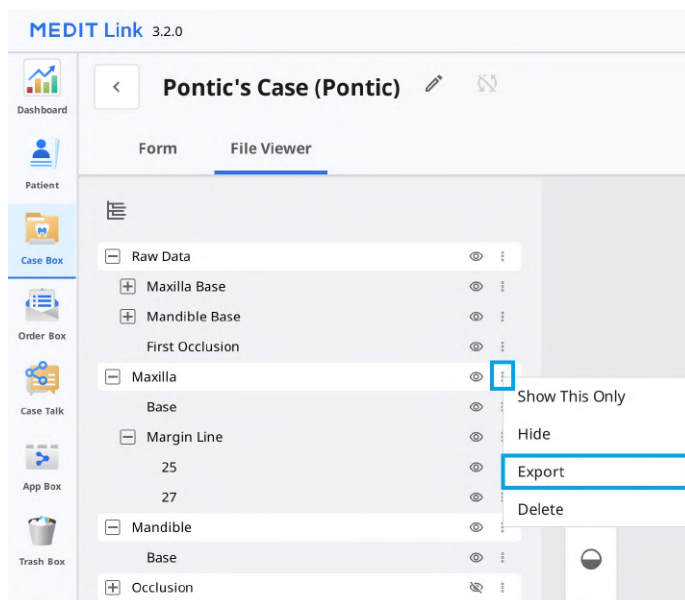

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 케이스 목록에서 원하는 케이스를 클릭합니다.
3. 파일 뷰어 탭의 데이터 트리에서 데이터 그룹 또는 각 데이터 우측의 점 3개 아이콘을 클릭합니다.
4. "내보내기"를 클릭합니다.

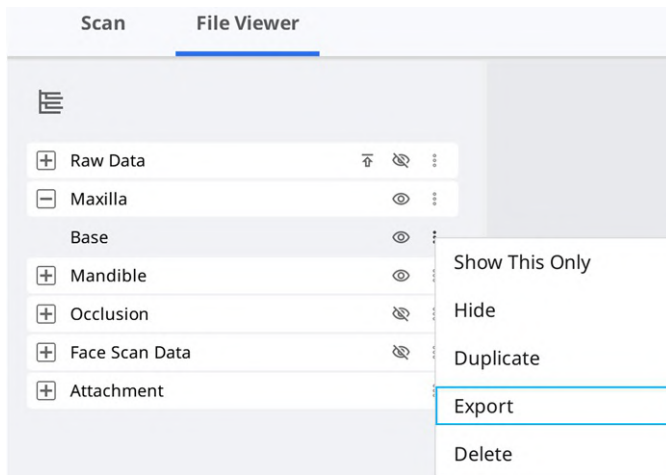

5. "옵션" 탭에서 대상 폴더, 폴더 이름, 파일 이름, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. 파일 목록 탭에서 데이터 트리에서 선택한 파일을 확인할 수 있습니다.



7. "내보내기"를 클릭합니다.
8. 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

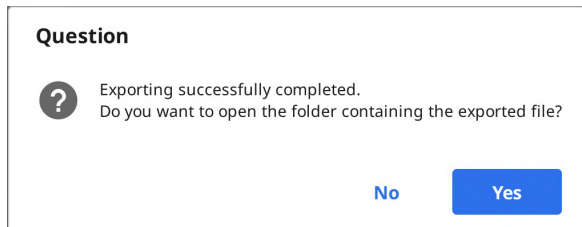


케이스 리스트를 CSV로 내보내기


케이스 리스트를 csv 형식으로 내보내기 가능합니다.

내보내기 한 csv 파일을 이용해 외부 프로그램을 이용해 케이스 관리가 가능합니다.

1. Case Box, Order Box, In Box, 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 내보내기 할 케이스를 선택합니다.

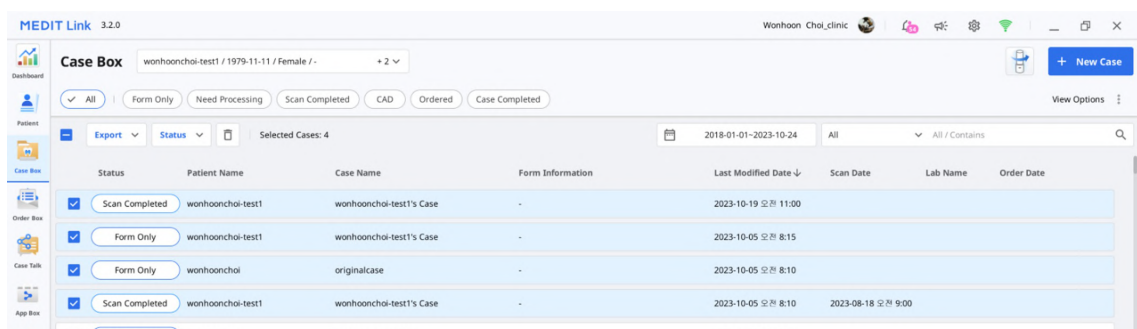

3. "내보내기"를 클릭한 후 "케이스 목록 (현재 설정된 항목)" 또는 "케이스 목록 (전체 항목)"을 선택합니다.

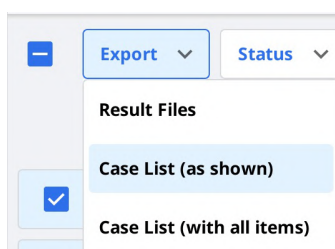

🔗참고

케이스 목록 (현재 설정된 항목): 화면에 보여지는 항목들을 포함하여 케이스 목록을 내보내기 합니다. 보기 옵션 > 테이블 항목에서 특정 항목을 화면에 보이게 설정하거나 숨길 수 있습니다. 케이스 목록 (전체 항목): 상태, 케이스 이름, 생년월일, 품 정보, 수정한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 가공소명을 포함한 전체 항목을 포함한 케이스 목록을 내보내기 합니다.

4. 내보내기할 경로와 파일 이름을 정하고 목록을 저장합니다.
5. 케이스 목록이 CSV 파일 형식으로 저장됩니다.

마진 라인 내보내기

Medit Link는 Medit Scan for Clinics에서 생성한 마진 라인을 CAD 프로그램으로 전달하여 활용할 수 있습니다.

색상 정보로서 마진라인 내보내기

일반적으로 마진 라인을 상악/하악과 함께 색상 정보로서 제공합니다. 이렇게 제공된 마진라인을 참조하여 캐드 프로그램에서 사용할 수 있는 마진라인을 생성할 수 있습니다.

예시:



🔗참고

meditMesh, OBJ, PLY와 같이 색상 정보를 가지는 파일 형식인 경우에만 해당 기능을 사용할 수 있습니다. STL 형식의 경우 이 기능이 적용되지 않습니다.

🔗참고



유형으로 3Shape을 선택한 경우에는 이 기능을 지원하지 않습니다.

파일로서 마진 라인 내보내기

마진 라인을 “~margin.xyz” 형태의 파일로서 내보내기 가능합니다.

이렇게 생성된 마진라인 파일은 exocad에서 추가 작업 없이 직접 읽어 활용할 수 있습니다.

예시:

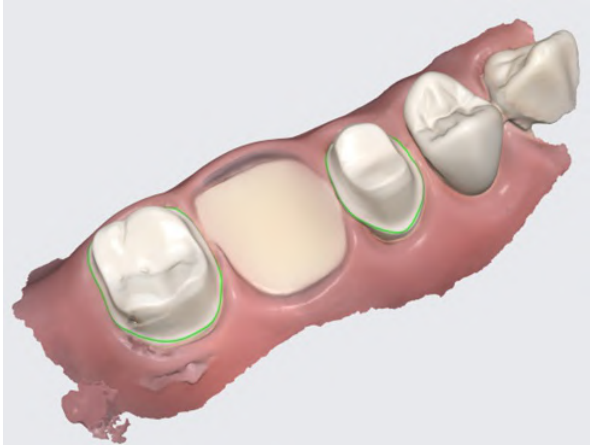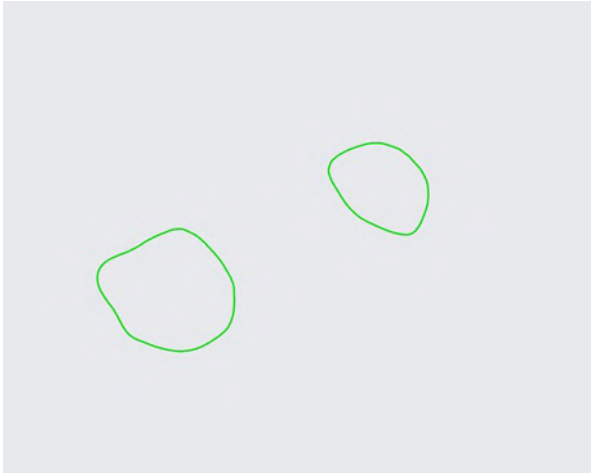상악	마진 라인
 마진 라인을 색상 정보로 가지는 결과물	 개별 파일로서 보내진 마진 라인

Medit Link Web 에서 파일 다운로드 하기

Medit Link 웹에서 케이스의 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

Medit Link PC 어플리케이션을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 이용해 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

참고


웹으로 부터 파일을 다운로드 하기 위해서 데이터는 반드시 **Medit** 클라우드에 업로드 되어 있어야 합니다.

다운로드 기능은 Medit Link 웹의 다음 메뉴에서 사용 가능합니다.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Case Box/Work Box의 오른쪽 상단에 "다운로드" 버튼을 제공합니다.

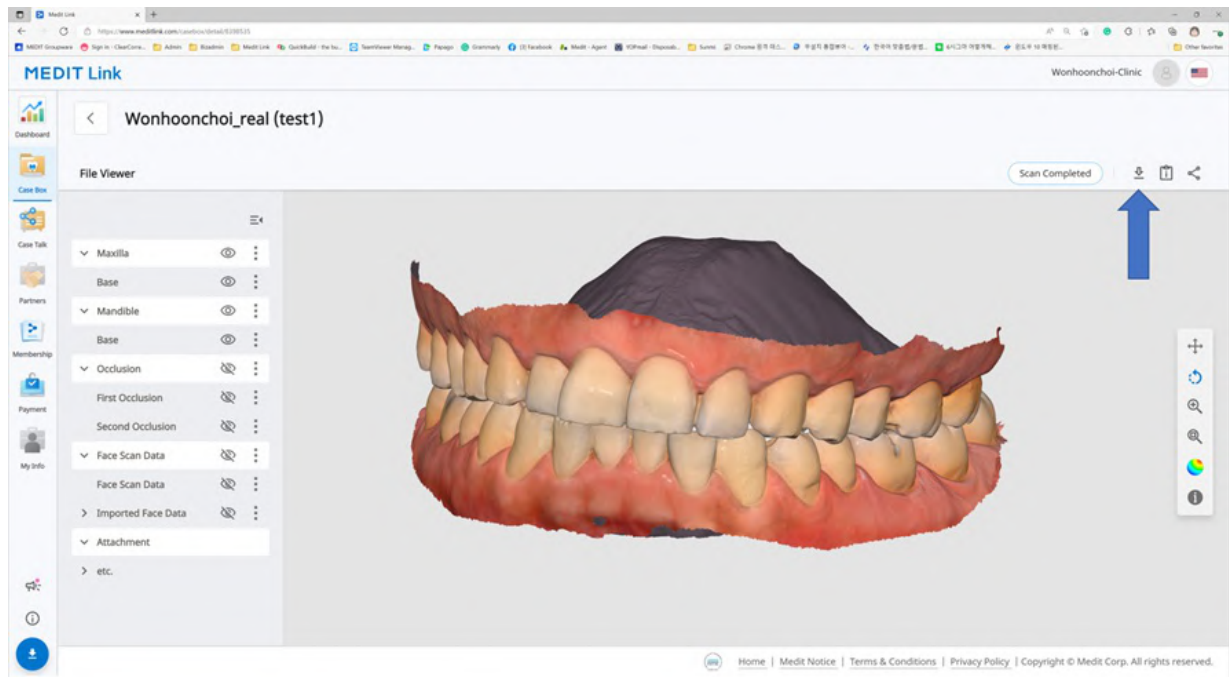


Web Viewer

Case Talk을 이용해 케이스를 공유하는 경우 다운로드 허용 여부를 선택할 수 있습니다.

케이스 공유할 때 “다운로드 권한 부여”를 선택한 경우, 공유한 케이스에 접속한 사용자는 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Share through Case Talk' dialog box. It includes options for sharing with 'Anyone', setting an 'Expiration Date' (2022-04-27), and a 'PIN Code' section with a checkbox for 'PIN Code'. The 'Grant Download Permission' option is checked and highlighted with a blue box, with a note that it is a 'Premium Feature'. Below this, the 'Allow comments' option is also checked. At the bottom, there is a text area for a comment and a 'Get Link' button.


공유 링크에 접속한 사용자는 오른쪽 상단에서 "다운로드" 아이콘을 클릭해 파일을 다운로드할 수 있습니다.

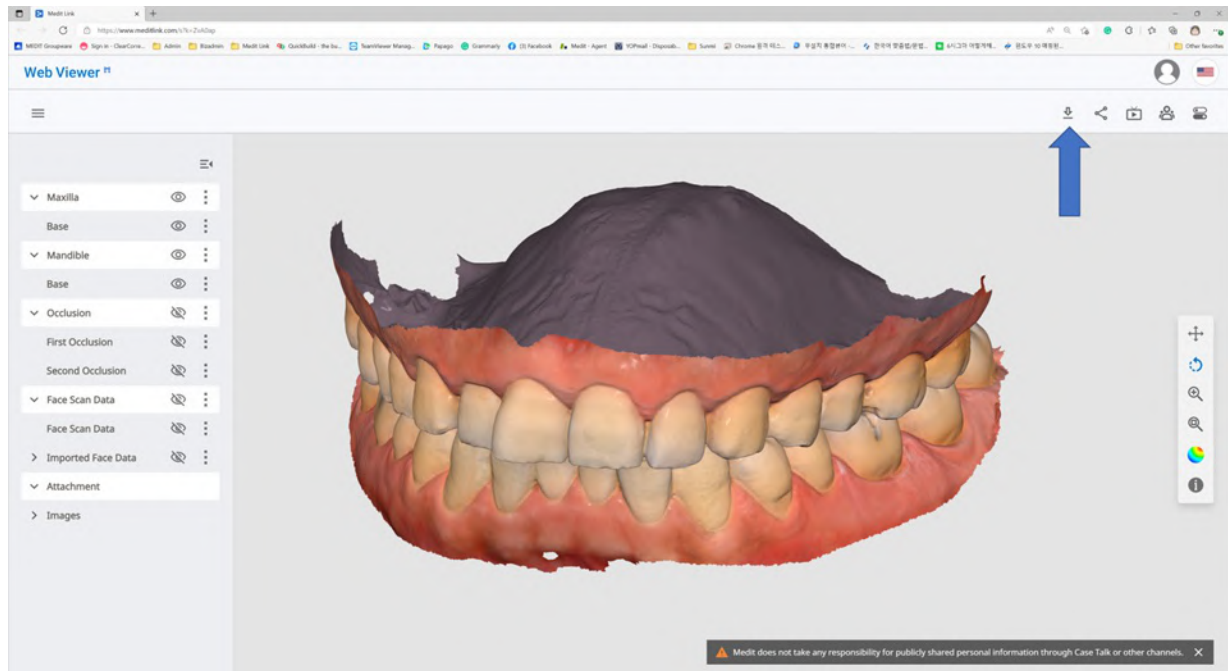

1. "다운로드" 버튼을 클릭합니다.



2. 다운로드 창에서 파일 형식을 선택합니다.

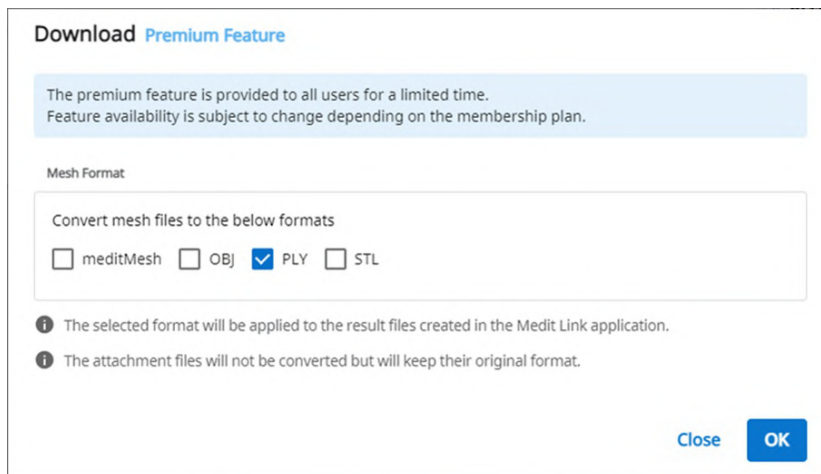

3. "확인"을 클릭합니다.

주문 및 주문 관리

연결 프로그램으로 부터 얻은 데이터, 사용자가 첨부한 데이터를 파트너에게 주문할 수 있습니다.

주문

케이스를 거래처에 주문할 수 있습니다.

1. 화면 오른쪽 상단의 "주문"을 클릭합니다.
2. 주문에 필요한 정보를 확인합니다.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. 주문할 거래처를 선택합니다.
4. "주문 목록"에서 상품 정보와 전달할 파일을 확인합니다.
 - 환자 이름 공유 여부를 결정할 수 있습니다.
5. "파일 목록"에서 주문할 파일을 확인합니다.
6. 배송 희망 날짜를 입력합니다.
 - 초기값은 주문한 날 이후 7일로 설정됩니다.
7. 특이사항/주의사항 등의 메모/태그를 기입하여 거래처에 전달할 수 있습니다.
8. 스캔 앱에서 복수 교합 결과를 생성한 경우, "모든 교합 관계 주문하기"를 체크하여 전체 교합 결과를 보낼 수 있습니다.
9. 주문을 진행합니다.

주문 수락 (In Box)

- 주문을 받은 거래처에서 주문 내용을 확인 후 주문을 수락합니다.

- 수락한 주문은 Work Box로 전달됩니다.

주문 취소 (Order Box)

- 거래처에서 주문을 수락하기 전, 주문을 취소할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

주문 거절 (In Box)

- 주문을 받은 거래처의 판단으로 주문을 거절할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

주문 케이스 확인

치과 계정의 Order Box에서 주문한 케이스의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 기공소 계정이라면 In Box의 Order Tab에서 확인할 수 있습니다.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

주문 정보	주문 ID/환자 이름/거래처 이름/스캔한 날짜/주문한 날짜/배송 희망 날짜/배송 예정 날짜/메모 등 주문한 제품의 상세 정보와 배송 정보를 확인합니다.
주문 목록	주문 상품의 상세 정보를 표시합니다.
배송	배송 정보를 입력/확인합니다.

배송 정보 입력 및 배송 (In Box)

완료된 작업의 배송 정보를 입력하고 배송을 시작합니다.

- “배송” 탭을 클릭합니다.
- 배송 정보를 입력하고, "등록"을 클릭합니다.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

- 입력한 배송 정보는 거래처로 전달됩니다.

배송 예정 날짜/배송 희망 날짜 관리

주문시에 배송 희망 날짜를 입력할 수 있고, 이 정보는 거래처에 전달됩니다. 주문을 받은 계정에서는 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다. 입력한 배송 예정 날짜는 주문처에 전달되어 확인이 가능합니다.

배송 희망 날짜 입력 (치과 계정)

- Case Box에서 주문할 때 배송 희망 날짜를 입력할 수 있습니다.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- 초기값은 주문한 날짜로부터 7일 후입니다.
- 기공물의 배송을 희망하는 날짜/시간을 입력 후 주문을 진행합니다.
- 슬라이더를 이동해서 손쉽게 설정할 수 있습니다.

배송 예정 날짜 입력(기공소 계정)

- In Box에서 주문 받은 케이스의 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다.

1. 치과에서 전달받은 배송 희망 날짜를 확인 후 조정이 필요한 경우 "편집" 버튼을 클릭합니다.



2. 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력합니다. 필요한 경우 코멘트도 남길 수 있습니다.
3. "적용"을 클릭합니다.

4. 입력한 배송 예정 날짜 및 코멘트가 주문과 함께 전달됩니다.
 - 주문한 계정의 Order Box에서 변경된 날짜 및 코멘트를 확인할 수 있습니다.
 - 입력한 배송 예정 날짜는 변경할 수 있고, 변경한 내용은 주문한 계정에 전달됩니다.
5. 변경 이력은 "이력" 버튼을 이용해 확인할 수 있습니다.



케이스 완료하기

주문 과정 완료 (Work Box/In Box)


전달받은 작업이 모두 완료되면, "완료"를 클릭해서 해당 케이스를 완료 처리합니다.

케이스 상세정보에서 완료하기

"열기" 또는 "재스캔" 버튼 우측에 점 3개 아이콘이 존재합니다.




해당 아이콘을 클릭하고, "Done"을 선택합니다.

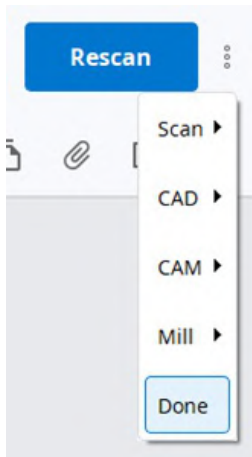

케이스 리스트에서 여러 개의 주문 완료하기

1. Work Box로 이동합니다.
2. 완료할 케이스를 모두 선택합니다.

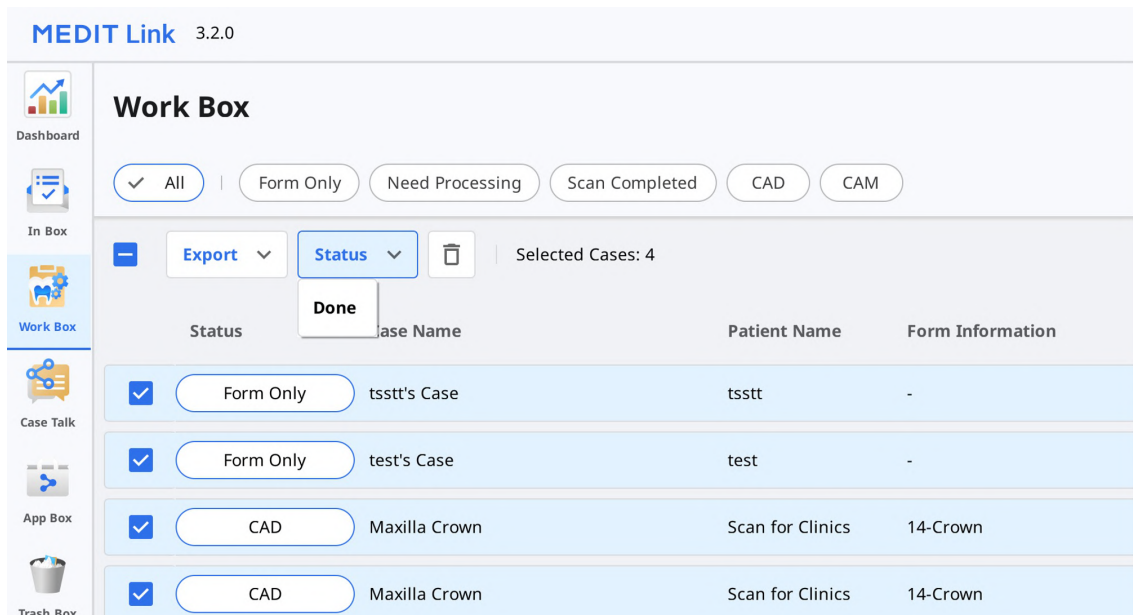


3. "상태" 클릭 후에 "Done"을 클릭합니다.

주문 과정 완료 (Case Box/Order Box)

기공소에서 작업이 완료되면, 치과에서 케이스를 확인 후 전체 주문 과정을 완료합니다.

기공소에서 작업을 완료하면 치과의 Order Box에서 "수령 확인" 버튼이 나타납니다.


"수령 확인"을 클릭하면 전체 주문 과정이 완료되고, 케이스는 "Case Completed" 상태로 변경됩니다.

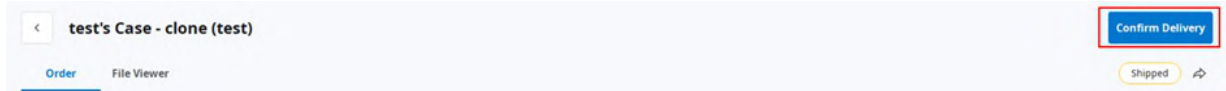

주문하지 않은 케이스를 “Case Completed” 상태로 변경하기

기공소로 주문하지 않고 진행한 케이스의 경우 다음 과정을 통해 “Case Completed” 상태로 변경할 수 있습니다.

1. Case Box로 이동합니다.
2. 완료하기 위한 케이스를 선택합니다.

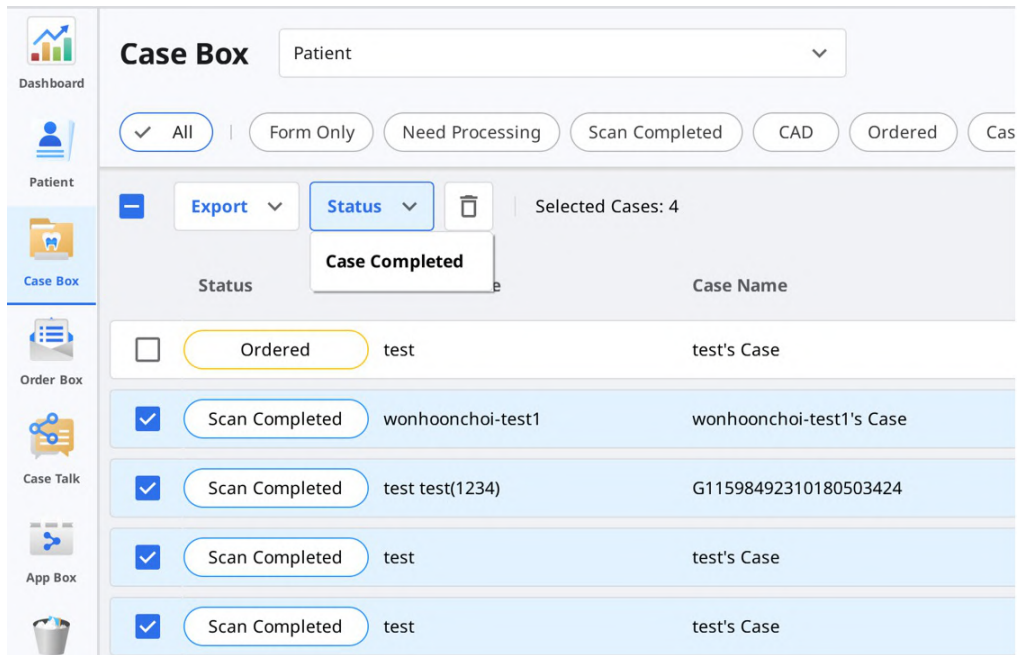

3. "상태" 클릭 후에 "Case Completed"를 클릭합니다.

태그를 이용한 커뮤니케이션

태그를 이용하여 케이스에 정보를 참고 정보를 기록하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

케이스 생성/수정 시 태그 입력

신규 케이스를 생성하거나, 케이스를 수정할 때 태그를 입력할 수 있습니다.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

한번 사용하였던 태그를 간편하게 검색하고 선택할 수 있습니다.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

주문 시 태그 입력

주문할 때 태그를 확인 및 수정하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

케이스 상세 화면에서 태그 확인

