

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

Introduktion	6
Medit Link	6
Tjänsteöversikt	6
Molntjänst	7
Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem	7

Medit Link > Installation

Systemkrav	8
Systemkrav för Windows	8
Systemkrav för macOS	8
Systemkrav för webbtjänst	8
Rekommenderade webbläsare	8
Lägsta krav för mobila enheter	8
Installation på Windows	9
Installation på macOS	11

Medit Link > Kom igång

Registrera & logga in	15
Medit Links webbsida	15
Registrera dig	15
Inloggning och välkomstsida	17

Medit Link > Medit Links webbsida

Dashboard	19
Översikt över dashboard	19
Medit Insights	19
Prenumerera på Medit Insights	20
Avsluta prenumerationen på Medit Insights	21
Patient	22
Sök patient	22
Case Box/Work Box	23
Fallfiltrering	23
Filtrering enligt patient	23
Filtrering enligt status	24
Filtrera enligt tidslängd	25
Filtrering enligt sökning	25
Falldetaljer	25
Order Box/In Box	27
Beställningsuppgifter	27
Tabbar i Order Box/In Box	27
Case Talk	28
Skapa en Case Talk	28
Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ	29
Case Talk-detaljer	30
Web Viewer	31
Anteckning	32
Kommentarer	33
Skärmdelning i realtid	33
Dataträd	33
Kontroller för dataträd	33
3D-modellkontroll	34
Partners	35

Sök efter partners	
Min partnerlista	35
Partnerinbjudan	36
Membership	37
Medlemskap	37
Min plan	38
Molnlagring	38
Prenumerera	39
Avsluta prenumerationen	40
Faktureringsinformation	42
Så lägger du till en betalningsmetod	42
Så ändrar du betalningsmetod	43
Utnyttja	44
Registrera inlösenkod	44
Aktivera inlösenkod	45
My Info	46
Mitt konto	46
Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)	46
Min skanner	47
Annan meny	48
Notifiera & uppdatera	48
Information från Medit	48
Ladda ner Medit Link-appen	48

Medit Link > Medit Link-appen

Översikt	50
Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.	50
Titelfält	51
Min information	51
Aviseringar	51
Notifiera & uppdatera	52
Inställningar	52
Nätverksstatus	53
Inställningar	55
Allmänt	55
Lagringshantering	56
Ställ in period	56
Lokal lagring	56
Molnlagring	56
Ställ in anslutna program	57
Exporteringsalternativ	57
Fallkonverteringsverktyg	59
Exportera fall	59
Importera fall	60
Proxyalternativ	62
Om	62
Användarguide	62
Meny	63
Dashborad	63
Patient	63
Lägg till ny patient	64
Radera patient	64
Sammanfoga patienter	64
Case Box/Work Box	65
Tabbar i Case Box/Work Box	65
Funktioner i Case Box/Work Box	66
Order Box/In Box	67
	67

Tabbar i Order Box/In Box	
Case Talk	67
App Box	68
Trash Box	68
Fallsynkroniseringsansvarig	69
Ladda upp	70
Ladda ner	70
Information från Medit	70
Filvisning	72
Dataträd	72
Modellkontrollverktyg	72
3D-modellkontroll	72
2D-bildkontroll	73
Detektionsverktyg	73
Skärminspelning och memo	73
Orto-inspelning	74
Fyll hål	75
Trimning	75
Optimera ocklusionsinriktning	78
Underkäkesrörelse	79
Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning	80
Så hanterar du flera resultat	80
Visa alternativ	82
Statusfilter	82
Visningstyp	83
Gruppering	83
Sortering	83
Filtrering och sök	85
Filtrering enligt patient	85
Filtrering enligt datum	86
Avancerade sökfunktioner	86

Medit Link > Arbetsflöde

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall	88
Skapa fall	88
Skapa fall i Case Box (klinik)	88
Skapa fall i Work Box (Labbb)	89
Redigera fall	89
Skapa fall i Case Box (Klinik)	89
Redigera fall i Work Box (Labbb)	90
Klona fall	90
Klona fall i Case Box (Klinik)	90
Klona fall i Work Box (Labbb)	91
Radera fall	91
Radera fall (Klinik och Labbb)	91
Forminformation	92
Registrering av forminformation i Case Box	92
Gå in på fliken Form	92
Gå in på fliken CAD	92
Registrering av forminformation i Work Box	92
Gå in på fliken Form	92
Gå in på fliken CAD	92
Lägg till tänder till en brygga	93
Inställning av skanningsalternativ	93
Medit Scan for Labs	93
Allmänna alternativ	93
Alternativ enligt tänder	93
	94

Lägg till i Favoriter	
Lägg till i Favoriter	94
Hantera favoritmallar	94
Jobba med skanning/CAD	95
Skanningsprocess	95
CAD-process	95
Hämta resultatfiler	96
Exportera skanningsresultatfiler	96
Exportera resultatfiler från fallista	97
Exportera resultatfiler från Filvisning	98
Exportera resultatfiler från dataträd	99
Exportera fallista som CSV	101
Exportera marginallinjen	102
Exportera marginallinjen i färg	102
Exportera marginallinjen i färg	103
Ladda ner filer från Medit Links webbsida	103
Case Box/Work Box	104
Web Viewer	104
Beställ/Hantera fall	107
Beställa fall	107
Bekräfta beställning (In Box)	107
Avbryt beställning (Order Box)	108
Avvisa beställning (In Box)	108
Kontrollera beställda fall	108
Ange fraktinformation (In Box)	108
Hantera leveransdatum	109
Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)	109
Slutföra fall	110
Slutfört (Work Box/In Box)	110
Slutför ett fall i falldetaljer	111
Slutför flera fall i fallistan	111
Slutfört (Case Box/Order Box)	111
Slutför att fall som inte beställts i Case Box	112
Kommunicera med hjälp av taggar	113
Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall	113
Lägg till taggar vid beställning	113
Kontrollera taggar på Falldetaljer	114

Introduktion

Medit Link

Medit Link är ett samarbetsverktyg utformat för att underlätta kommunikation mellan kliniker och labb för att tillhandahålla optimerade arbetsflöden för alla parter.

Det tillhandahåller differentierade funktioner baserat på typen och behörigheterna för varje konto. Programmet har ett användarvänligt användargränssnitt för hantering av arbetsflödet, från skanning med orala och modellskannrar och fallbeställning till design och prototillverkning.

Medit Link utgörs av en webbtjänst och en datorapplikation.

Tjänsteöversikt

		Web	App
		• Registrera och hantera kontot • Sök • Sök och hantera partners • Dela fall via Web Viewer med en delningsbar länk • Tillgång till fall skapade i appen • Hantera beställningar	• Ange forminformation • Skanna • Hantera beställningar • Länka med CAD • Hantera patienter
Klinik	Admin	Sök och hantera partners och dina kliniker och dela fall. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna, länka till CAD, gör beställningar och hantera patienter. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Medlem	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box
Labb	Admin	Sök och hantera partners och ditt labb, och dela fall. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna, länka till CAD och hantera beställningar. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Medlem	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Molntjänst

Medit Link stöder automatisk uppladdning/nedladdning av databaser och filer via AWS (Amazon Web Services).

Data som sparas i molnet synkroniseras automatiskt till andra datorer i organisationen så att alla användare kan komma åt samma data från vilken dator som helst när som helst. Molnbaserad säkerhetskopiering och återställning håller all din data säker. Det håller dina data säkra även i händelse av dataförlust på grund av plötsligt datorfel.

Med molntjänsten kan tandläkare och laboratorier som samarbetar snabbt dela data och slippa skicka e-post eller manuellt överföra skanningarna. All data, inklusive patientinformation, är säkert krypterad, lagrad och överförd. Medit följer medicinska lagar och förordningar som HIPAA och GDPR.

Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem

Medit Link tillhandahåller ett eget beställningssystem.

- Med Medit Link kan användare upprätta partnerskap mellan tandläkare och tandlaboratorier och dela data snabbt och enkelt.
- Du kan kontrollera och hantera beställningsstatus.

Systemkrav



Kontrollera systemkraven för Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs om du vill använda skanningsmjukvaran med din skanner.

Systemkrav för Windows

	Laptop & Skrivbord
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz eller högre
RAM	16 GB eller högre
Grafik	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) eller högre/eller motsvarande AMD-videokort
OS	Windows 10 64 Bit (inte tillgängligt i 32 Bit) eller högre

Systemkrav för macOS

	Mac
Processor	M1 med 8-kärnig, 7-kärnig GPU, 16-kärnig Neural Engine
RAM	16 GB eller högre
OS	Monterey 12

Systemkrav för webbtjänst

Rekommenderade webbläsare

	Webbläsare
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Lägsta krav för mobila enheter

	Android	iOS
Enhet	Motsvarande till Galaxy S7 eller högre	Motsvarande till iPhone 7 eller högre
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB eller högre	2 GB eller högre
AP	Över Snapdragon 710	A10 Fusion


Installation på Windows

Medit Link är installerat som ett paket med skanningsprogrammen Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs.


1. Kör Medit_LinkSetup.exe.
2. Välj språk för installationen.
3. Välj mappen där du vill installera Medit Link. Vänligen läs och godkänn licensvillkoren och klicka på "INSTALLERA".

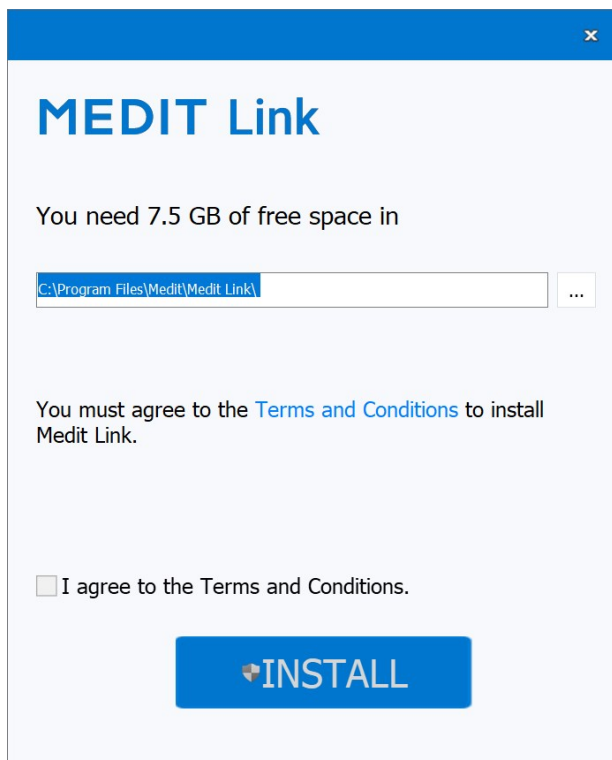

4. Se till att skannerkabeln är bortkopplad från datorn innan du går vidare till nästa steg. Installationen kanske inte startar om skannern är ansluten till din dator.
5. Programmet installeras automatiskt. Detta kan ta några minuter. Stäng inte av eller koppla ur datorn förrän installationen är klar.

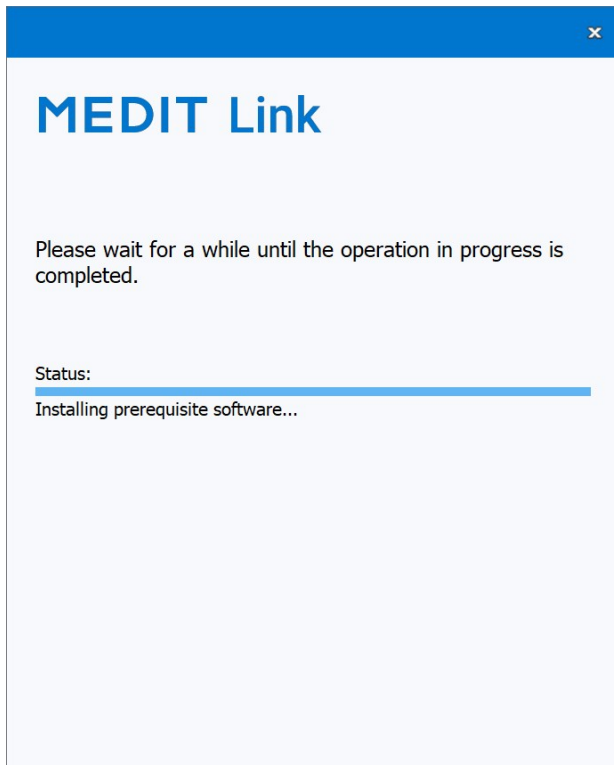

6. Starta om datorn när installationen är slutförd. Du kan gå vidare utan att starta om datorn om du inte har skannern.

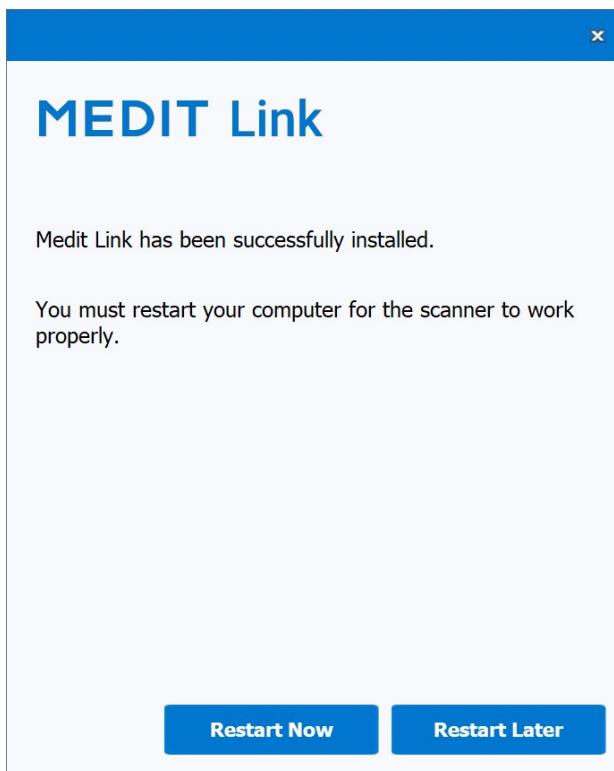


Om du inte startar om datorn efter att installationen är slutförd kan det hända att skannern inte fungerar korrekt.


Installation på macOS

Medit Link är installerat som ett paket tillsammans med Medit Scan for Clinics.

1. Kör Medit_Link_x.x.x.pkg och klicka på "Fortsätt".

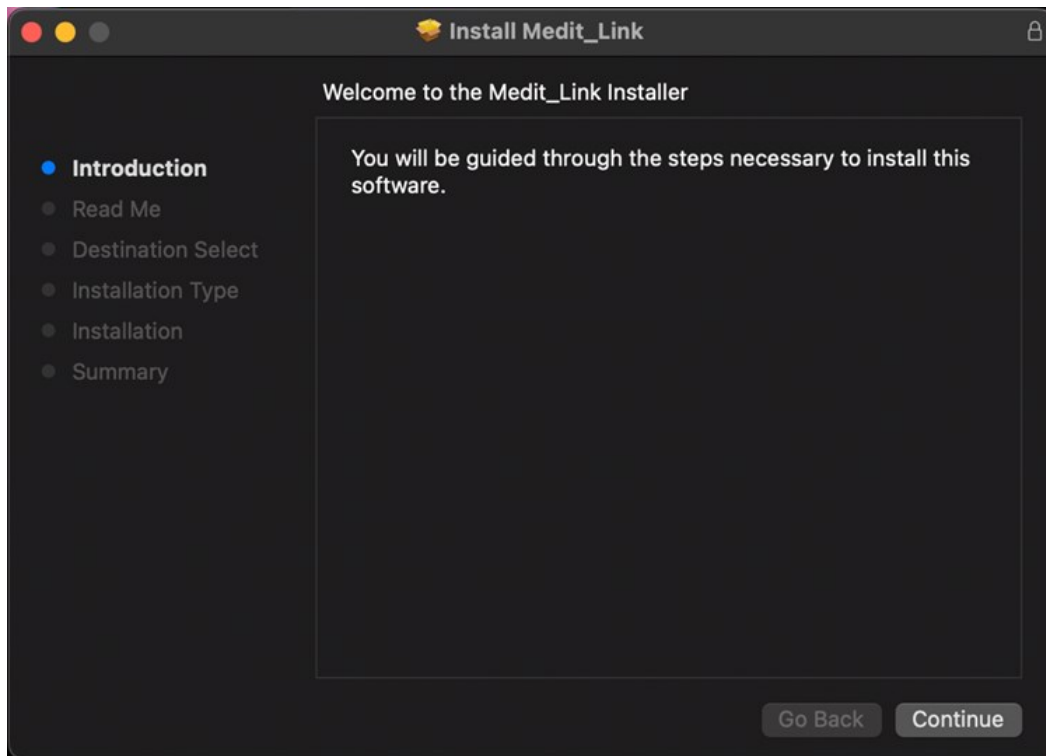


2. Läs slutanvändarlicensavtalet och klicka på "Fortsätt".

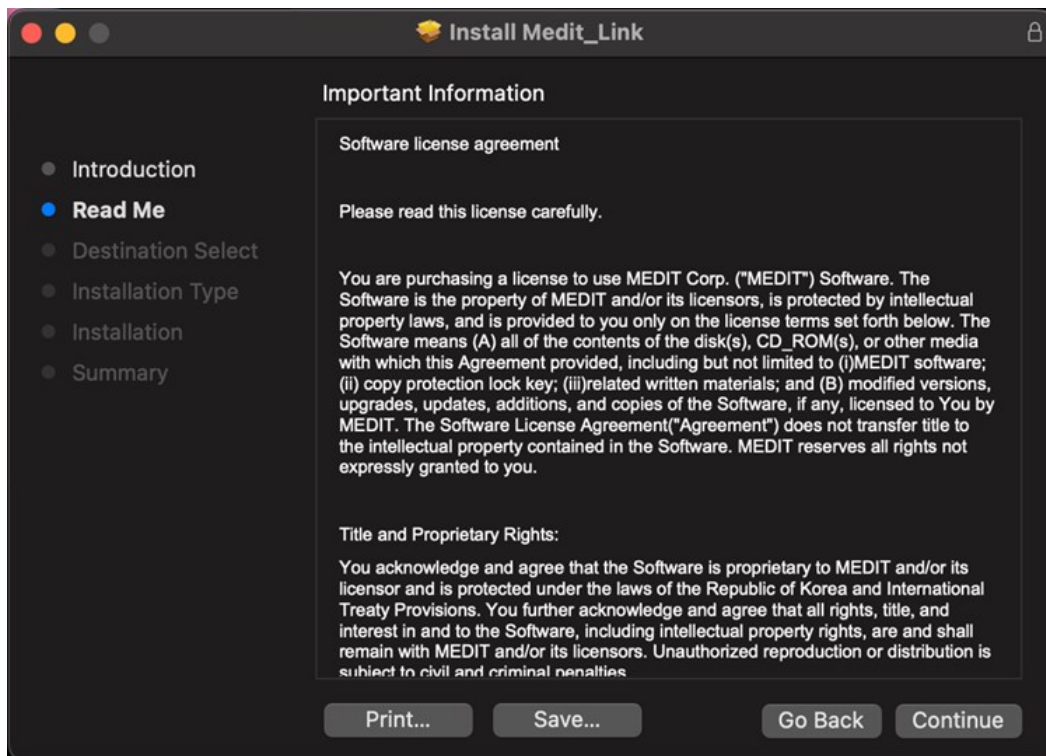

3. Välj skivan som ska installeras och klicka på "Fortsätt".




4. Klicka på "Ändra installationsplats..." för att ändra platsen för installationen.

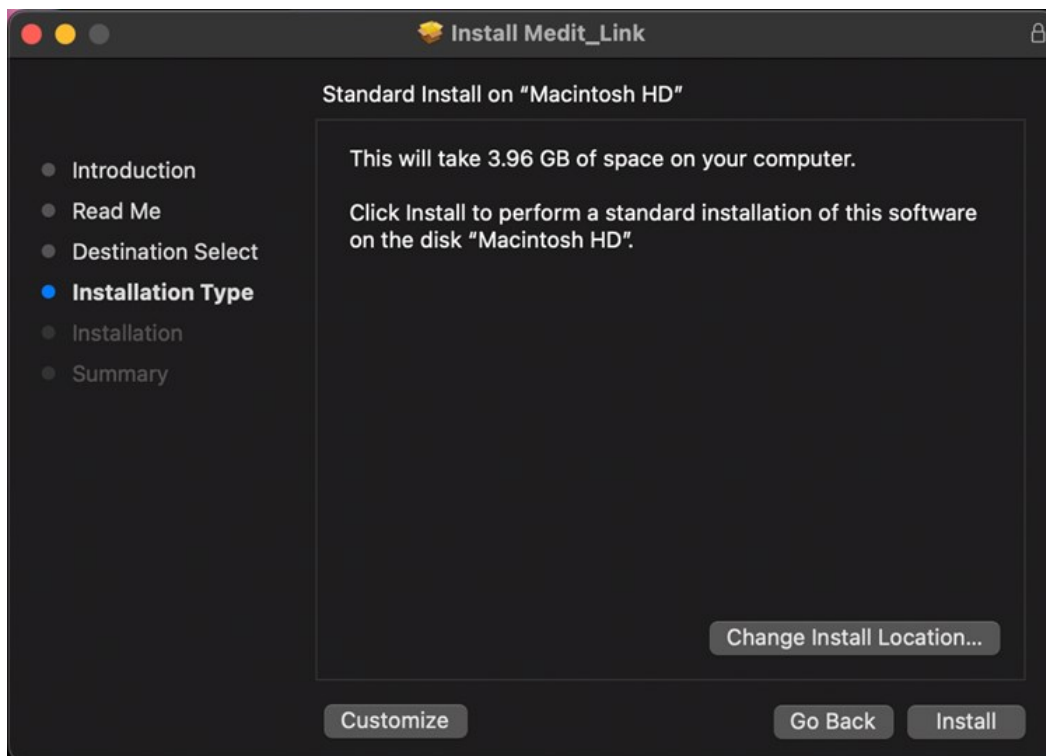


5. Klicka på "Installera" och skriv in ditt Mac-lösenord för att tillåta installation om detta krävs.



6. Vänta tills installationen är klar.

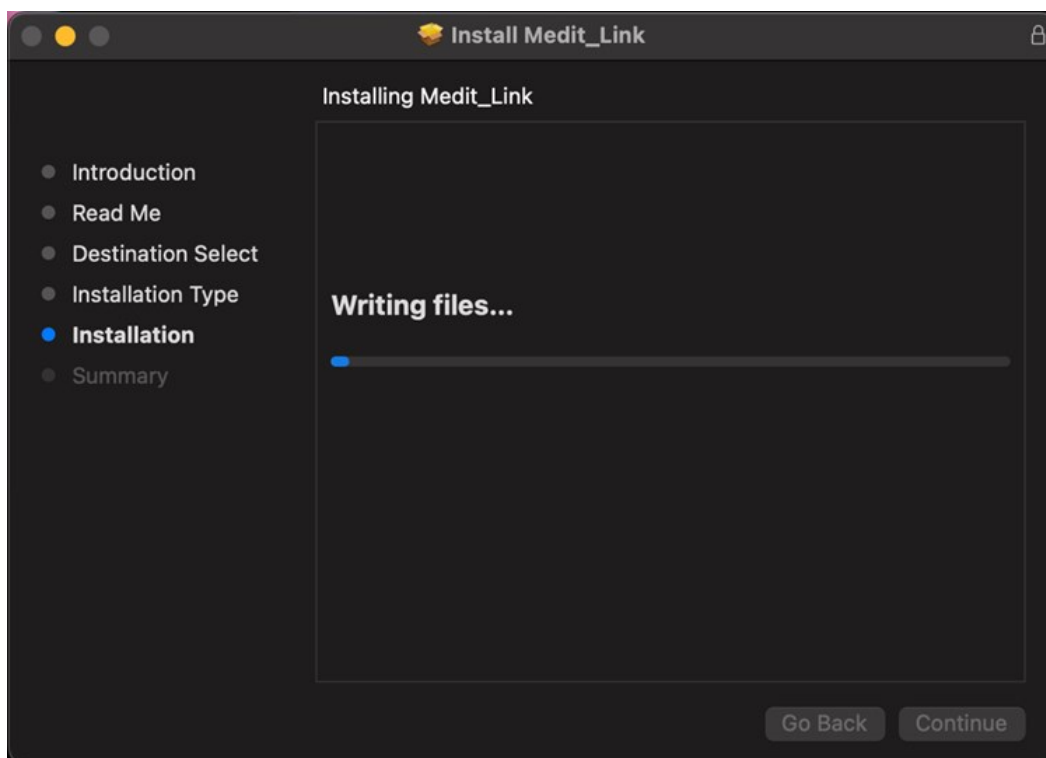


7. Klicka på "Stäng" för att stänga installationsfönstret.

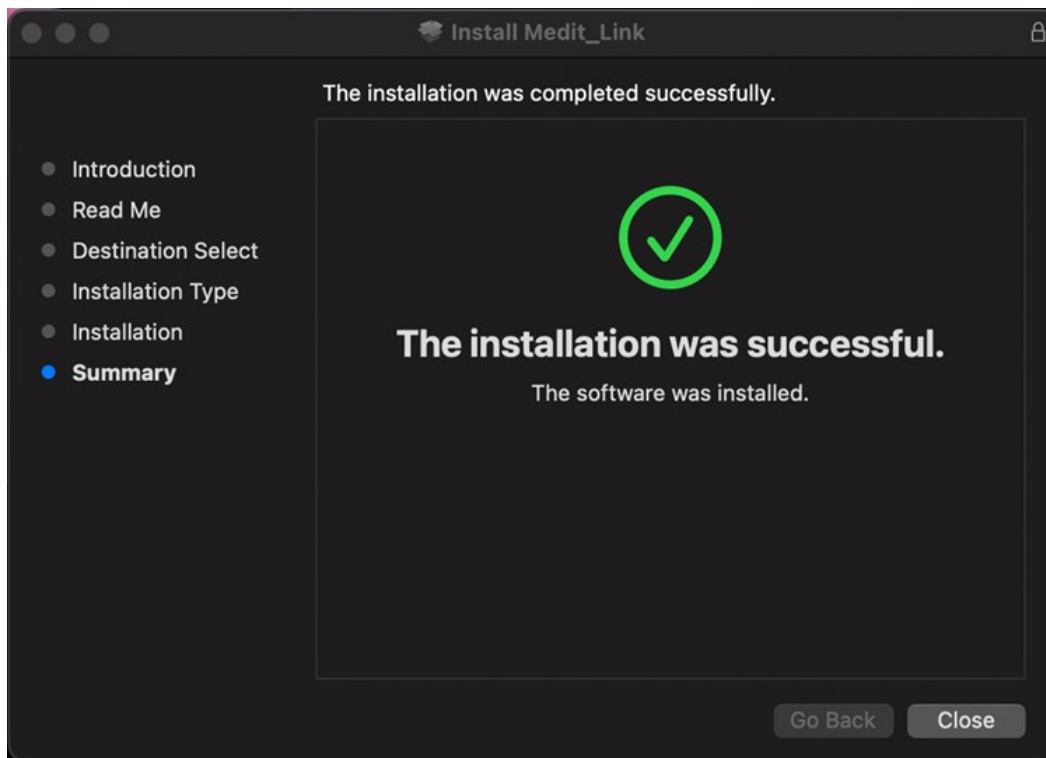

Registrera & logga in

Medit Links webbsida

Registrera dig för Medit Links tjänst på www.meditlink.com.

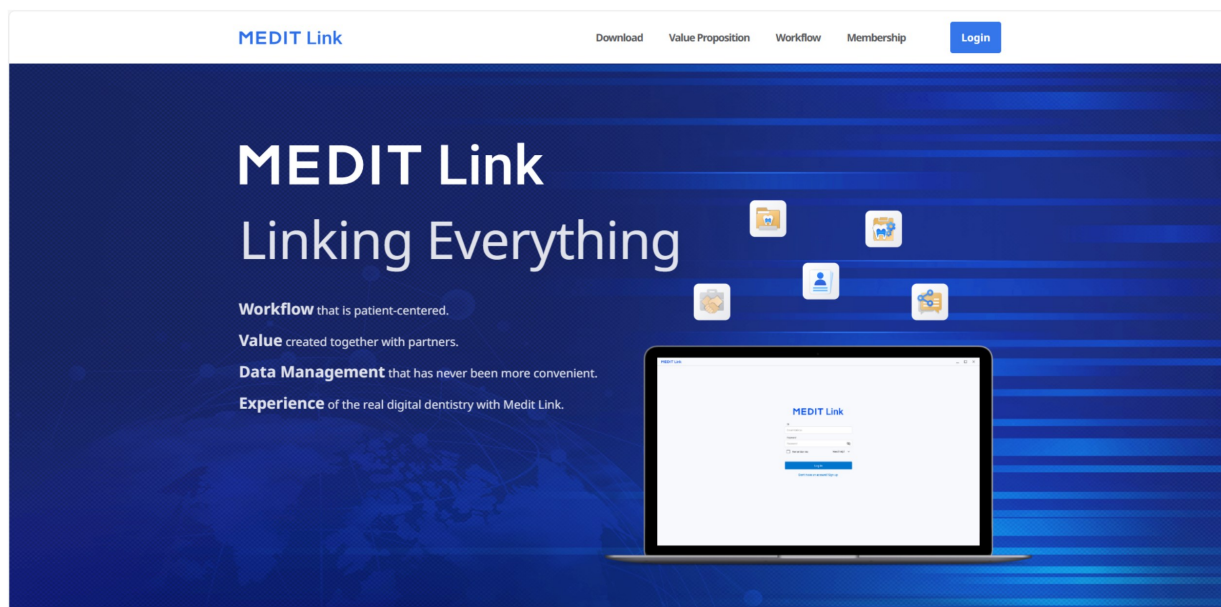

Obs

Registrera dig på Medit Link China på www.meditlink.cn.

Registrera dig

För att använda Medit Links tjänst måste du registrera dig för att få ett konto. När du har skapat ett klinik- eller labbkonto kan du använda funktionerna i Medit Link.

Användare kan välja en av följande fyra kontotyper för att registrera sig för medlemskap och använda tjänsten med fullständiga eller begränsade funktioner och privilegier, beroende på kontotyp.

- Klinik - Admin
- Klinik - Medlem
- Labb - Admin
- Labb - Medlem

Administratören är vanligtvis en representant för din organisation som har full tillgång till alla Medit Links funktioner och tjänster. Medlemskontot har däremot begränsad åtkomst.

Följ dessa steg för att registrera ett medlemskap:

1. Klicka på "Har du inte ett konto ännu? Registrera dig." på inloggningssidan.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. När du har läst de tillhandahållna beskrivningarna, klicka på knappen "Registrera" för den kontotyp du önskar.



Clinic



Lab

Administrator
Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator
Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member
Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member
Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Följande registreringsformulär visas.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Ange klinikens eller labbets namn och gör sedan följande, beroende på önskad kontotyp:
 - Om du registrerar dig som administratör, klicka på "Kontrollera tillgänglighet" för att se om det angivna namnet är tillgängligt.
 - Om du registrerar dig som medlem, klicka på "Sök". Administratören måste redan registrera din organisation innan du registrerar dig.
5. Fyll i resten av registreringsformuläret och klicka på "Registrera".

Obs

Om du samtycker till att få marknadsföringsinformation vid registreringen kommer Medit att skicka dig användbar information om produkten och tjänsten.

6. Ett verifieringsmail kommer att skickas till dig.
7. För att slutföra registreringsprocessen, verifiera din e-postadress med hjälp av den mottagna länken.

Inloggning och välkomstsida

1. Ange din e-postadress och ditt lösenord på inloggningssidan och klicka på "Logga in".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

- Följande dialogruta visas om du inte har fyllt i din företagsinformation.

Welcome, stage-test-wh!

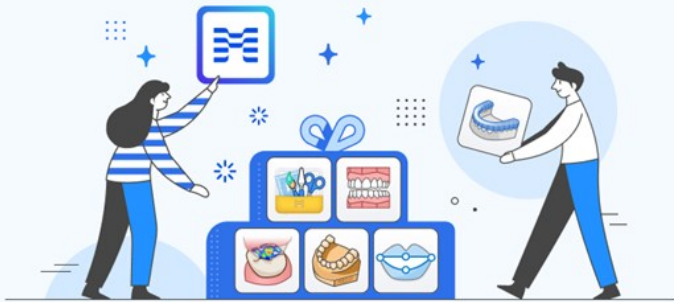

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

Obs


För att använda Medit Links tjänster måste du ange information om din klinik eller labb via administratörskontot.

- Klicka på knappen "Gå till min klinik" eller "Gå till mitt labb" och ange klinik- eller labbinformation, inklusive företagsnamn, omslags-/loggbilder, tjänster du erbjuder, kontorsadress, telefonnummer etc.
- Du kan när som helst redigera informationen som du skriver in på välkomstsidan på My info > Min klinik eller fliken Mitt labb på Medit Link Web.

Dashboard

Översikt över dashboard

Du kan se statistiken för allt arbete som gjorts i Medit Link i visualiserade grafer och diagram - både i Medit Link-appen och på webben.

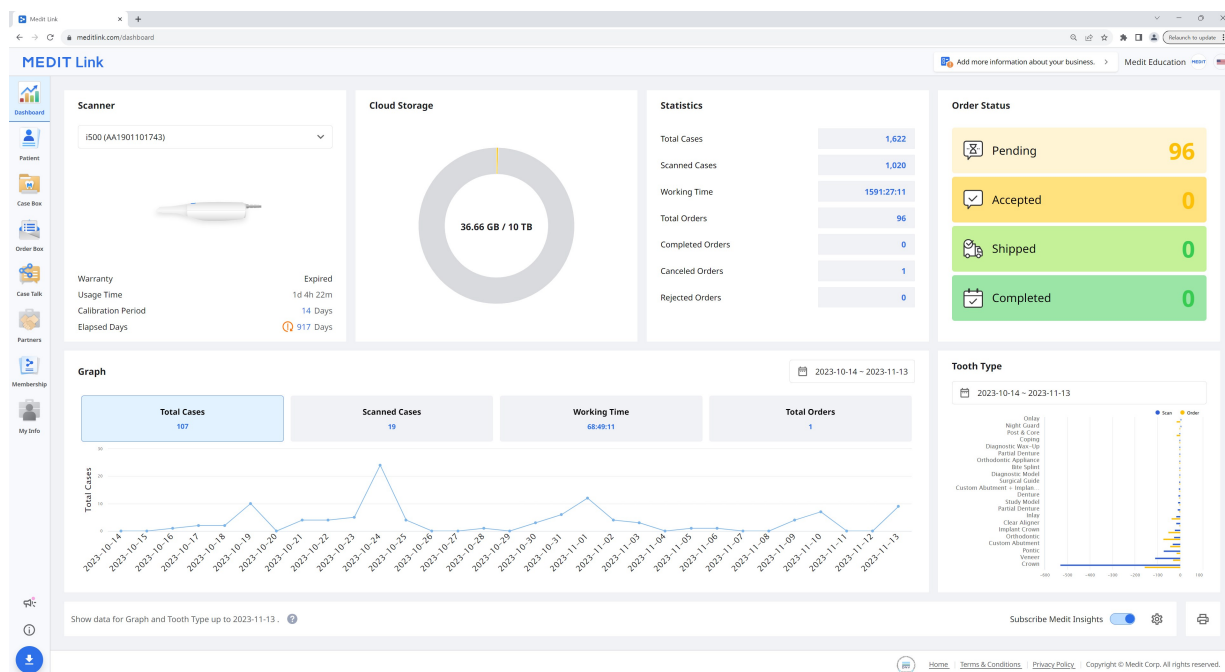

Grafer och diagram i instrumentpanelen visar statistik för allt arbete som gjorts i Medit Link.

Skanner	Visar information om aktiva skannrar, inklusive garanti, skannerns användningstid, kalibreringsintervall och total kalibreringstid.
Molnlagring	Visar molnets totala kapacitet och mängden som används.
Statistik	Visar fallstatistik enligt jobbstatus.
Beställningsstatus	Visar fallstatistik enligt beställningsstatus.
Graf	Graf över jobbinformation per period.
Tandtyp	Visar statistik över antalet skanningar och beställningar enligt behandlingsinformation.


Medit Insights

Medit Insights är en rapporttjänst som hjälper dig att analysera din användningsstatistik.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Medit Insights

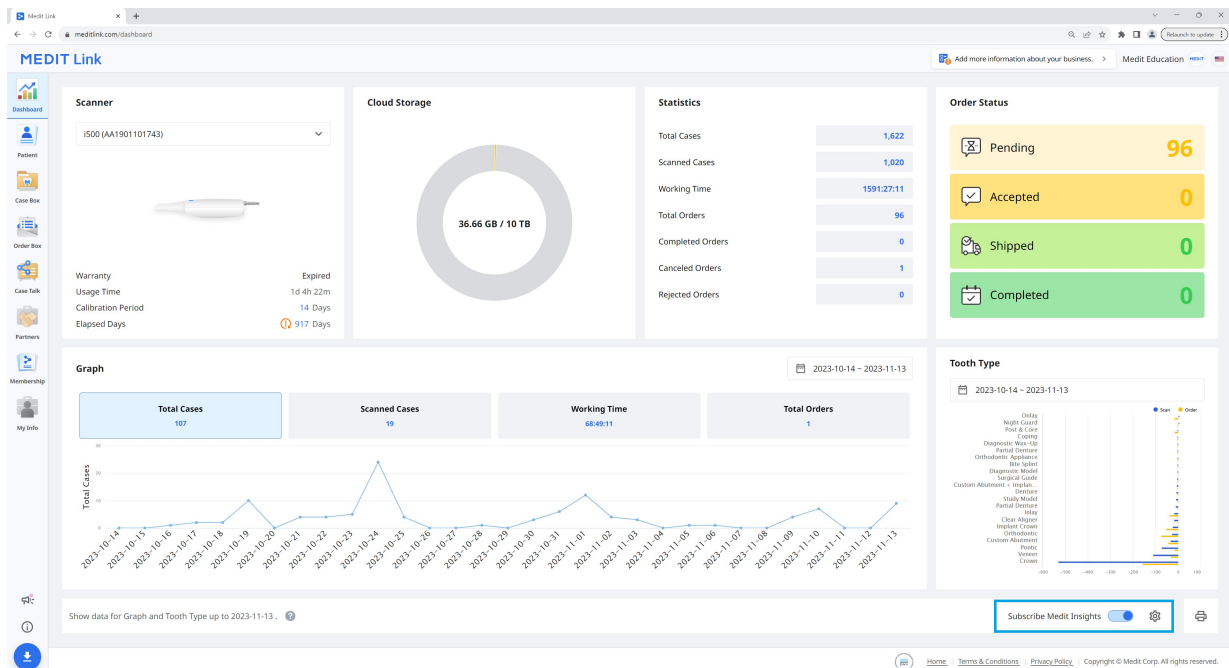

Prenumerera på Medit Insights

Du kan få en rapport via e-post den andra dagen i varje månad. Ingen ytterligare registreringsprocess krävs. Aktivera bara "Prenumerera på Medit Insights".

Om du inte använder e-postadressen du använt för Medit Link-kontot kan du registrera en annan e-postadress för att ta emot Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Den andra i varje månad får du ett e-postmeddelande med statistik enligt nedan.

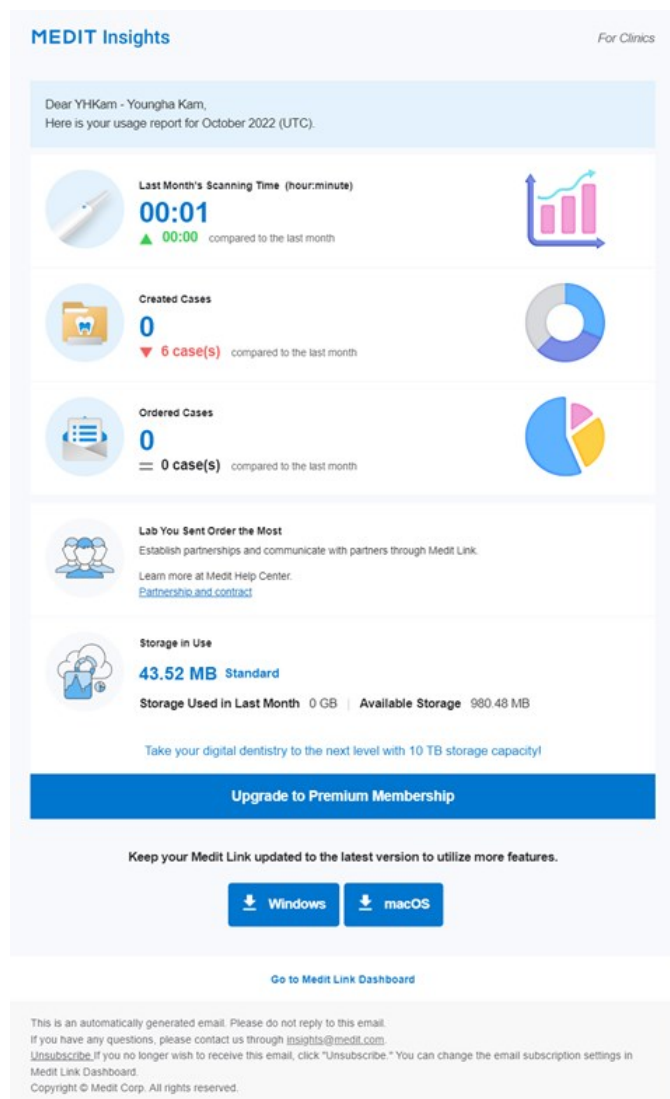

Banner	Medit ger användbara tips och information här. * Om du inte vill se bannern, avmarkera kryssrutan Marknadsföring och kampanjavgift i Min information > Mitt konto.
Statistikinformation	Statistikinformationen visas, såsom skanningstid, skapade fall, mest beställda labb etc.
Ladda ner Medit Link	Klicka på knappen för en nedladdningslänk för Medit Link.
Dashboard	All statistisk information baseras på informationen i din Dashboard. Du kan se mer information i Dashboard.


Avsluta prenumerationen på Medit Insights

Inaktivera "Prenumerera på Medit Insights" i Dashboard eller klicka på "Avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet du fått.

Patient

Du kan hantera fall baserat på patientnamn och patient-ID.


Alla patienter som registrerats via Medit Link-applikationen visas i en lista, vilket gör det lättare att hantera patienter och deras fall.

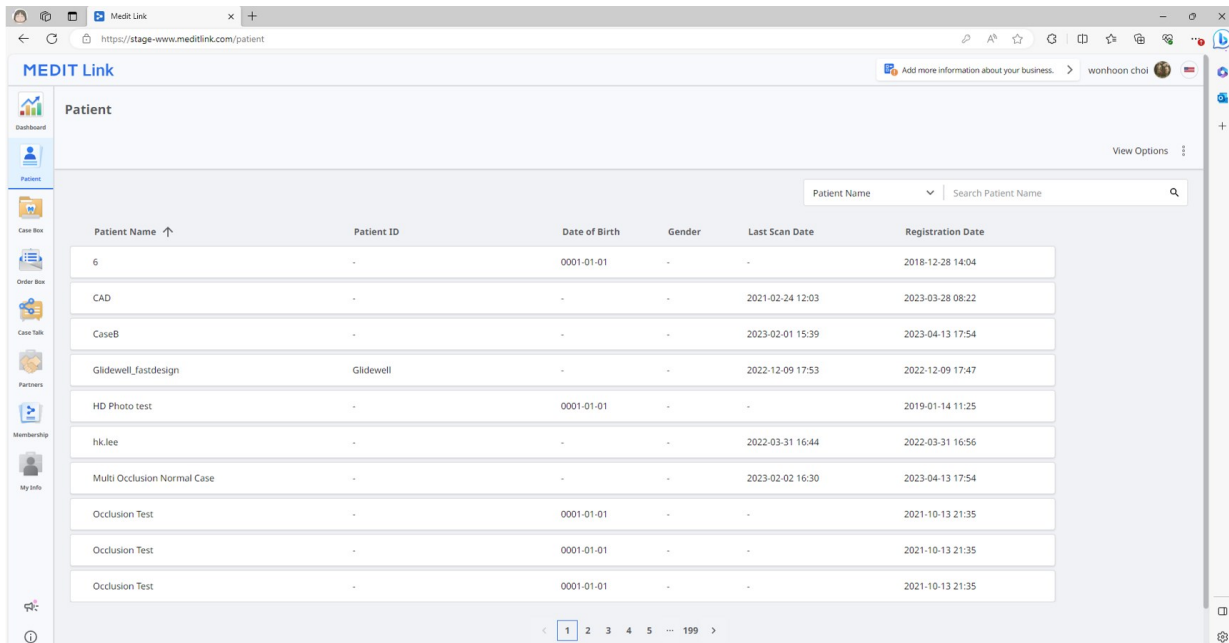

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hkleee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Sök patient

1. Ange dina sökkriterier mellan Patientnamn eller Patient-ID från rullgardinsmenyn uppe till höger i patientlistan.

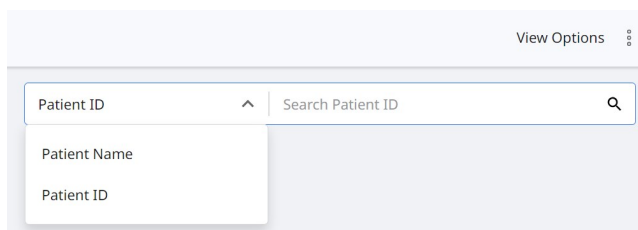

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Ange patientens namn eller patient-ID och gör en sökning enligt de valda sökkriterierna.
3. Endast patienter med angivet patientnamn eller ID visas i listan.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) eller Work Box (Labb) visar alla fall som användaren har skapat i Medit Link-applikationen. Du kan visa filer i en webbläsare utan att installera ett separat program.

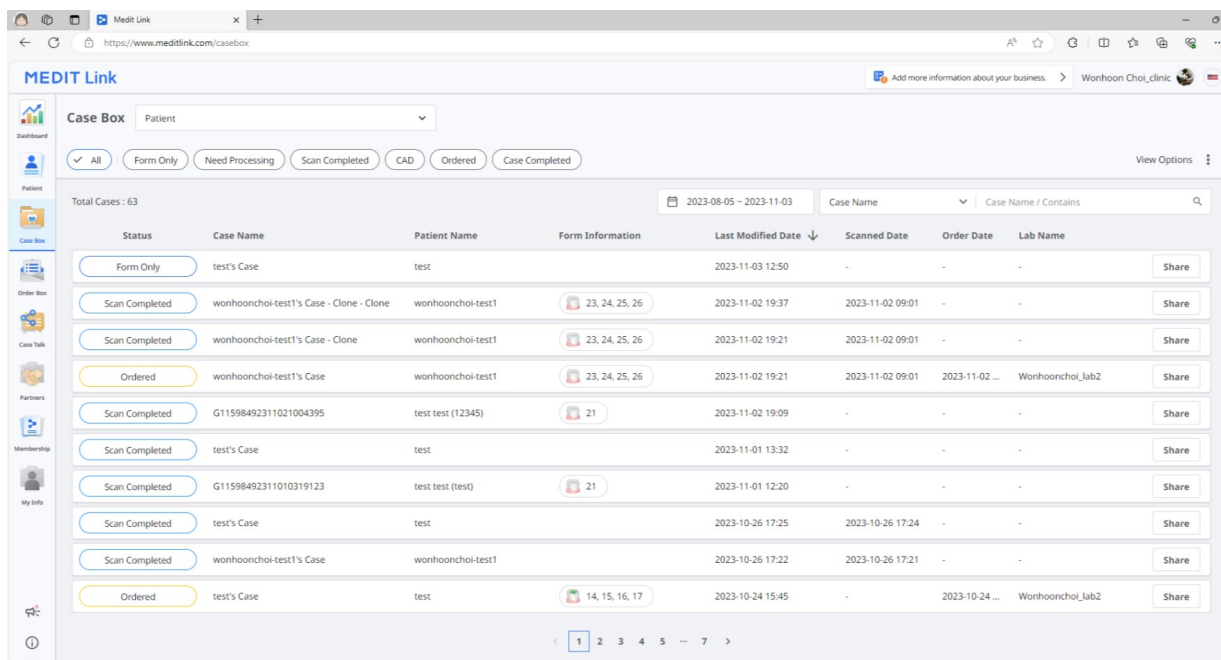


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a dropdown menu set to 'Patient'. Below this are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table lists several cases, including 'test's Case' and 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone'. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

Fallfiltrering


Filtrering enligt patient

Du kan filtrera fall enligt patient. Du kan använda detta för att hitta fall för specifika patienter.

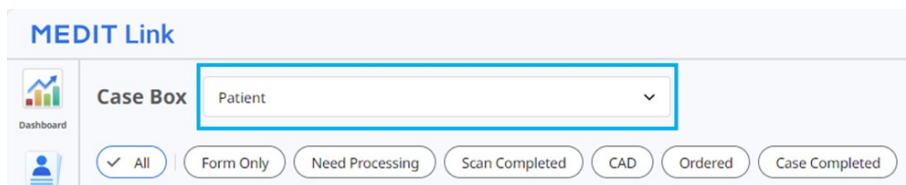

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' dropdown menu open. The dropdown list displays a search bar with the text 'test' and a list of patient names with checkboxes next to them. The patients listed are: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom of the list.

1. Ange ett patientnamn i sökfältet.

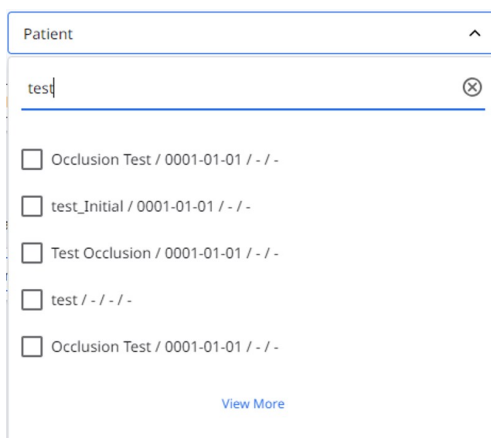

The screenshot shows the patient search dropdown menu with the search bar containing 'test'. The dropdown list displays a list of patient names with checkboxes next to them. The patients listed are: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom of the list.

2. Välj en patient från listan med sökresultat.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Endast fall för de utvalda patienterna visas i listan, vilket gör det lättare att hitta de fall du vill arbeta med.

MEDIT Link
Add more information about your business.
Wonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

Total Cases : 63
2023-08-05 - 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

Filtrering enligt status

Du kan filtrera fall enligt status.

All
☒ Form Only
Need Processing
☒ Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

- Klicka på den status du vill se. Webbbläsaren visar endast fall i den valda statusen.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

Följande statustyp tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Labb)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrera enligt tidslängd


Du kan filtrera och visa fall som senast ändrats inom den period du anger.

1. Klicka på filtret för tidslängd.



2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Välj intervall.

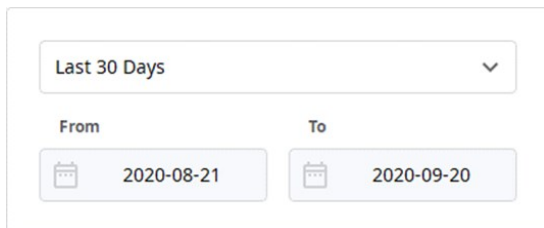

Last 30 Days


From 2020-08-21 To 2020-09-20

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som ändrats inom perioden.
- Idag: Visa fall senast ändrade idag.
- Igår: Visa fall senast ändrade med gårdagens datum.
- Senaste 7 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 90 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 90 dagarna, exklusive idag.
- Denna månad: Visa fall från denna månad.
- Föregående månad: Visa fall från föregående månad.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Filtrering enligt sökning

Du kan anpassa sökfunktionerna för att enkelt och snabbt söka efter den information som du behöver.

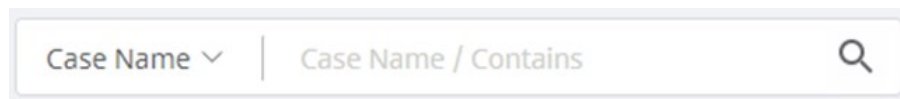


Case Name ▾ | Case Name / Contains 🔍

Sökalternativ baserat på klinik/labbkonto:

Case Box (Klinik)	Fallets namn, patientnamn, patient-ID, labbnamn
Work Box (Labb)	Fallets namn, patientnamn, kliniknamn, beställnings-ID

Falldetaljer

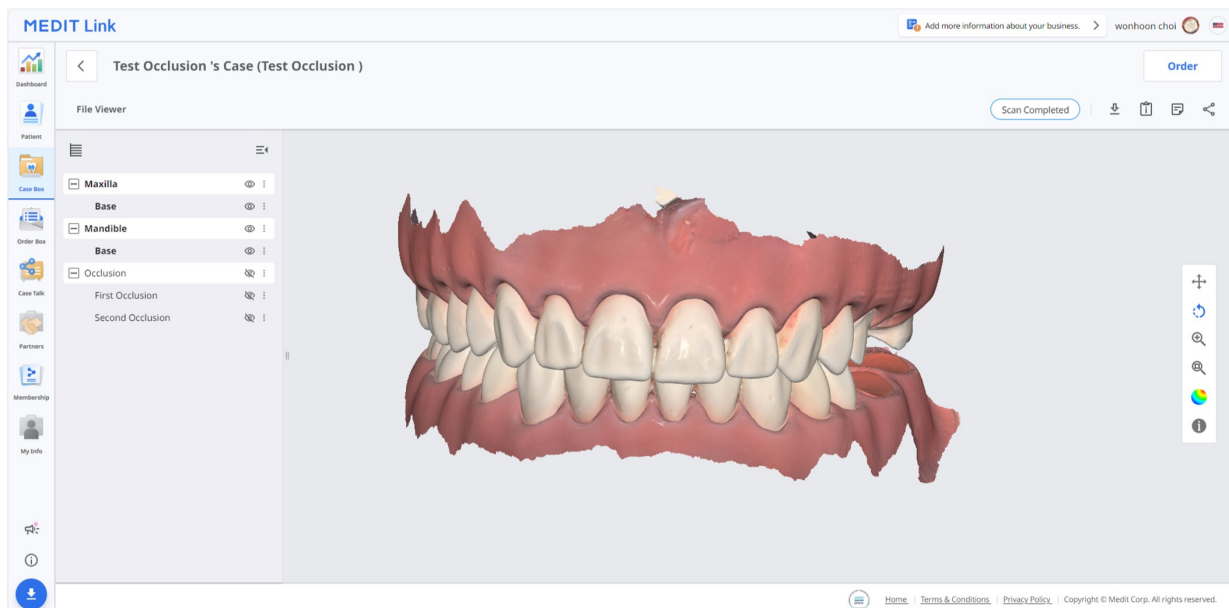

Följande fallhanteringsverktyg finns i Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till Case Box/Order Box	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Ladda ner	Ladda ner filer i fallet till datorn.
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox eller Safari utan att installera ytterligare program.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) eller In Box (Labb) visar beställda fall i Medit Link-applikationen.

Beställningsuppgifter

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered ZL...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered ZL...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered ZL...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered ZL...	None

- | | |
|---|--|
| 1 | Visar fallets namn och patientens namn. |
| 2 | Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande). |
| 3 | Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning |
| 4 | Visa funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc. |
| 5 | Visar detaljerad information om beställningar, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och anteckningar & taggar. |
| 6 | Visar den beställda produktinformationen och leveransstatus. |


Tabbar i Order Box/In Box

Beställ	Filvisning
Visar detaljerad information om beställningen, såsom order-ID, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade eller bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer som du anger, med vem som helst med den delade länken eller med registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista med alla delade fall i "Case Talk" i Medit Link-appen och på Medit Links webbsida.

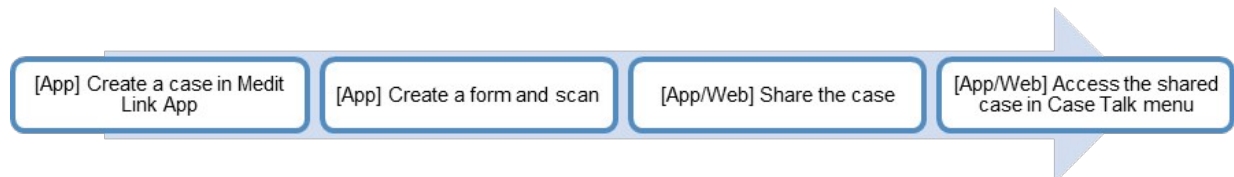

Man kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.

Skapa en Case Talk

Du kan skapa en delad länk till ett fall skapat i Case Box/Work Box.

1. Hitta ett fall du vill dela och klicka på knappen "Dela" till höger.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area displays a table of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table shows 63 total cases, with a filter for 'Form Only' selected. The cases listed include 'test's Case', 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone', and 'G11598492311021004395'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Välj de filer som du vill dela.

Share through Case Talk

File List

☒	Maxilla			
☒	Base	meditMesh	3,449KB	
☒	Mandible			
☒	Base	meditMesh	2,926KB	
☒	Occlusion			
☒	First Occlusion	meditMesh	662KB	
☒	Second Occlusion	meditMesh	611KB	
☒	Face Scan Data			

6 items selected.
15.23MB/200 MB

Share With

Share with Anyone

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

3. Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ.
4. Klicka på "Hämta länk" för att skapa en delad länk.

Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code
Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Dela med	• Dela med alla Skapar en delad länk. Du kan dela filerna med vem som helst. • Dela med specifika personer Skapar och skickar en delad länk till specifika personer.
Dela via	Om du väljer "Dela med specifika personer" kan du dela länken med specifika personer på olika sätt. • Mejladress • SMS • Partners
Utgångsdatum	Ställ in utgångsdatum för länken. När länken har upphört att gälla kommer personerna som du delat länken med inte längre kunna använda den. Du kan utöka perioden upp till 90 dagar från idag.
PIN-kod	Ställ in en 6-siffrig åtkomstkod för att säkerställa datasäkerhet.
Dela patientens namn	Om du markerar det här alternativet kommer alla personer som är anslutna via länken att kunna se patientens namn.
Ge tillstånd för nedladdning	Om du markerar det här alternativet kan alla användare som har tillgång till den delade länken ladda ner filerna.
Tillåt kommentarer	• Om du klickar i detta alternativ kommer du kunna kommunicera genom den delade länken. • Om du avmarkerar alternativet kan mottagaren endast se dina kommentarer, men kommer inte att kunna lägga till sina egna.
Kommentar	Du kan lämna ett meddelande i kommentarsfältet.

Case Talk-detaljer

Du kan se filer i det delade fallet. Följande funktioner är tillgängliga på informationssidan för Case Talk.

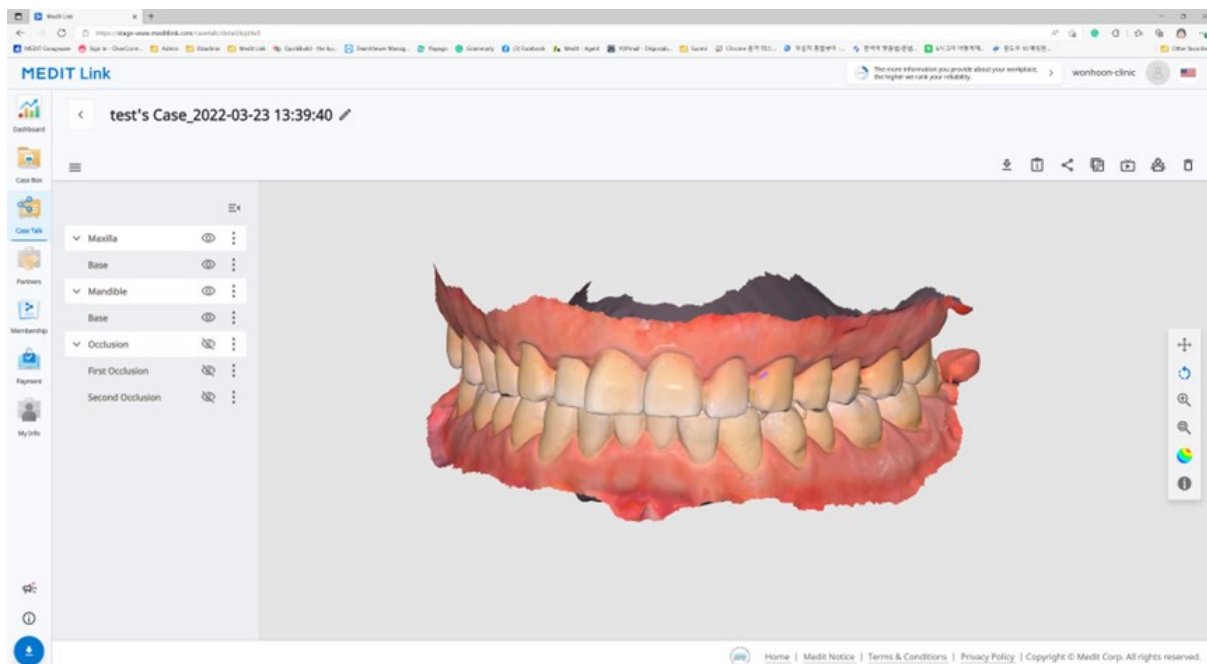

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till den lokala datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.

	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	Kopiera länk	Kopiera den delade länken till urklipp. Den kopierade länken visar de delade filerna i din webbläsare.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som använder den delade länken.
	Radera	Radera den delade länken. Den borttagna delade länken är inte längre tillgänglig.

Obs


Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Web Viewer

Du kan se delad data i Case Talk i en webbläsare.

Du kan kommunicera med de personer som har tillgång till länken med anteckningar och kommentarer.

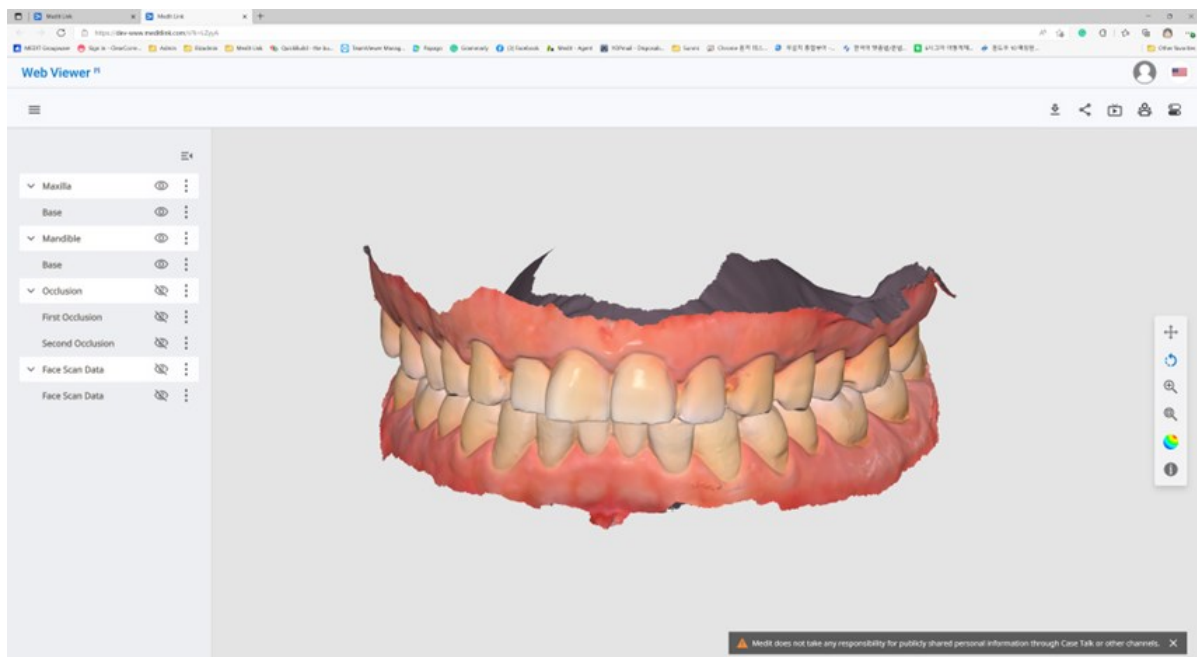

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.

	Deltagare	Visa alla användare som är anslutna till den delade länken.
	Tandmarkering	Byt tandmarkeringssystem.


 Obs

Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Anteckning

Du kan lägga till anteckningar på en angiven plats på 3D-modellen. Alla med länken kan se de kommentarer som du lägger till.

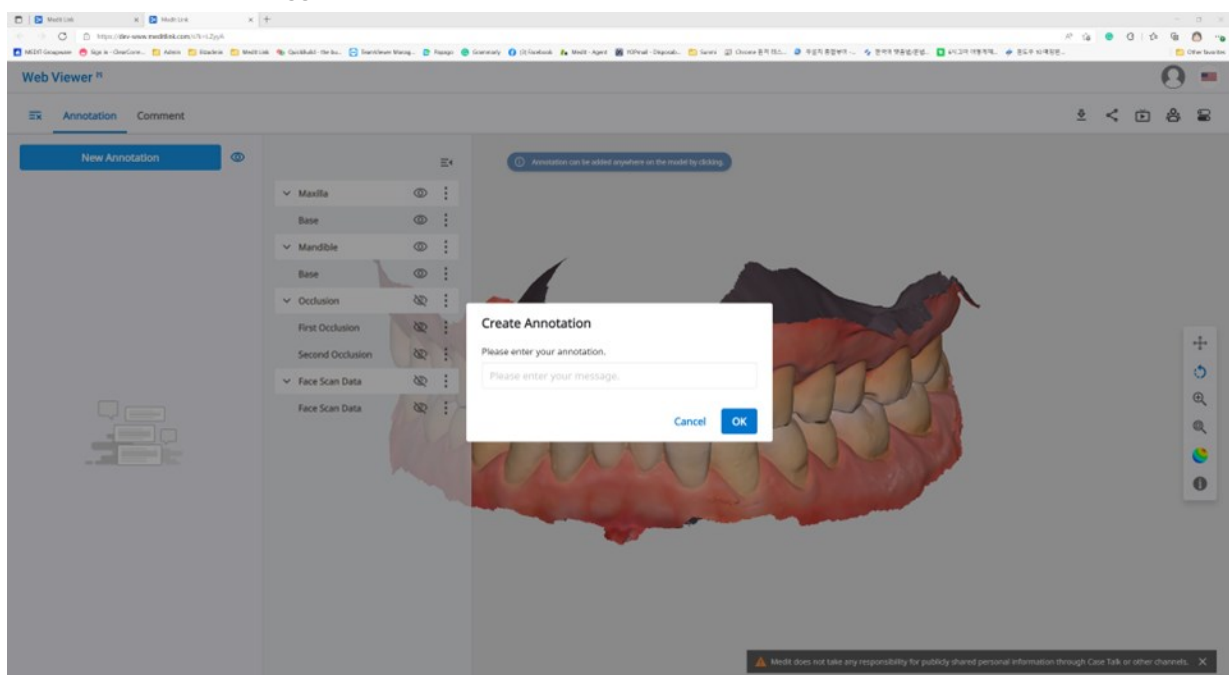

 Obs

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Anteckning

1. Hitta menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj fliken "Anteckning". Använd knappen "Ny anteckning" för att lägga till en anteckning var som helst på datan med ett klick.
2. Skriv meddelandet och klicka sedan på "OK" för att spara det.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. Du kan använda kommentarer som en enkel kommunikationskanal. Klicka på den skapade anteckningen för att skriva ett svar och tryck på "Skicka".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1
09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Kommentarer

Du kan kommunicera med användare som har tillgång till länken via fliken "Kommentar" i Web Viewer-menyn.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- [Kommentar](#)

Skärmdelning i realtid


Du kan dela din skärm i realtid.



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- [Live](#)

1. Klicka på "Live" för att dela din Web Viewer-skärm med anslutna användare.

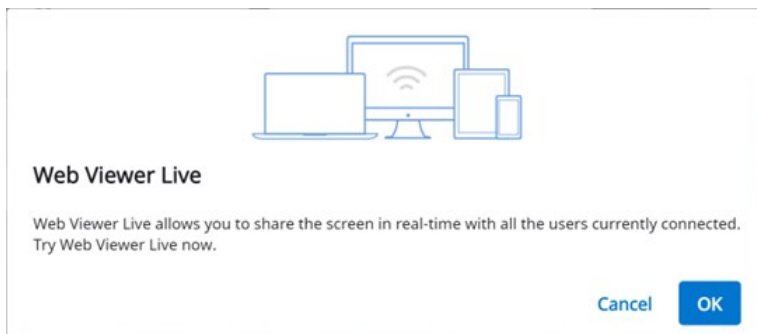


2. Klicka på "OK" för att börja dela din skärm.
3. Andra personer som är anslutna via länken kan acceptera skärmdelningen.
4. Skärmen för användaren som begärt skärmdelning synkroniseras med skärmen för personen som tagit emot begäran.

Dataträd



All data grupperas och visas enligt attribut i dataträdet. Du kan visa eller dölja data, justera opacitet m.m.

Kontroller för dataträd

Visa/dölj	Klicka på "ögon"-ikonen för att visa eller dölja data i vyn. Kontrollera datasynlighet som en grupp eller enskild fil.
-----------	--

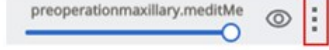Opacitet	Håll musen över ett synligt element för att se skjutreglaget för opacitet. Justera reglaget för att ändra transparensen på dina data. 
Utökad meny	Den utökade menyn visas på höger sida av varje element i dataträdet. Den innehåller följande alternativ:  • Visa endast detta: Dölj alla andra data förutom aktuella data. • Dölj: Dölj aktuella data.

3D-modellkontroll

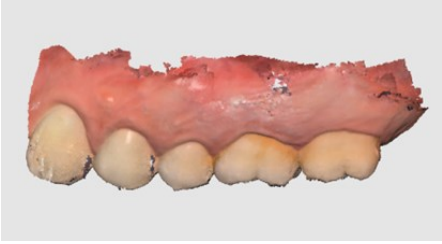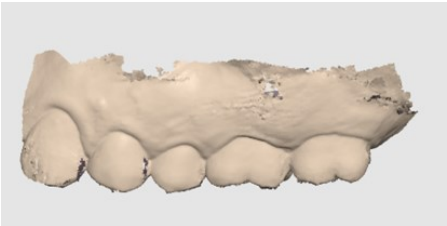	Panorera	Flytta modellen.
	Roterar	Roterar modellen.
	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.
	Modellvisningsläge	Visa data i verkliga texturfärger. 
		Visa data i en enda färg. 

Partners

Du kan söka efter potentiella partners för att begära ett partnerskap och se listan över nuvarande partners.




Tjänster som använder Google Maps finns inte tillgängliga för Medit Link China.

Sök efter partners


Du kan söka efter Medit Link-användare utifrån deras företagsnamn och/eller adress.

I sökresultaten kan du skicka en partnerskapsförfrågan till ett företag som du skulle vilja arbeta med.

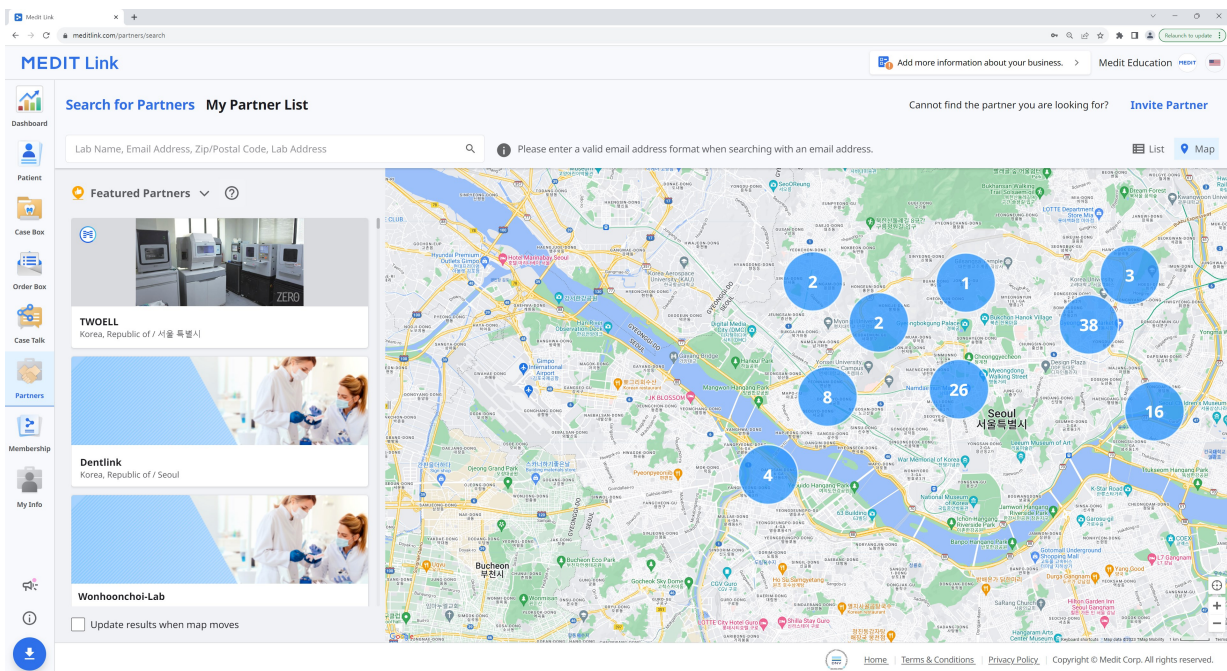

Min partnerlista

Du kan granska dina nuvarande partnerskap med alla dina befintliga partnerföretag i Min partnerlista.

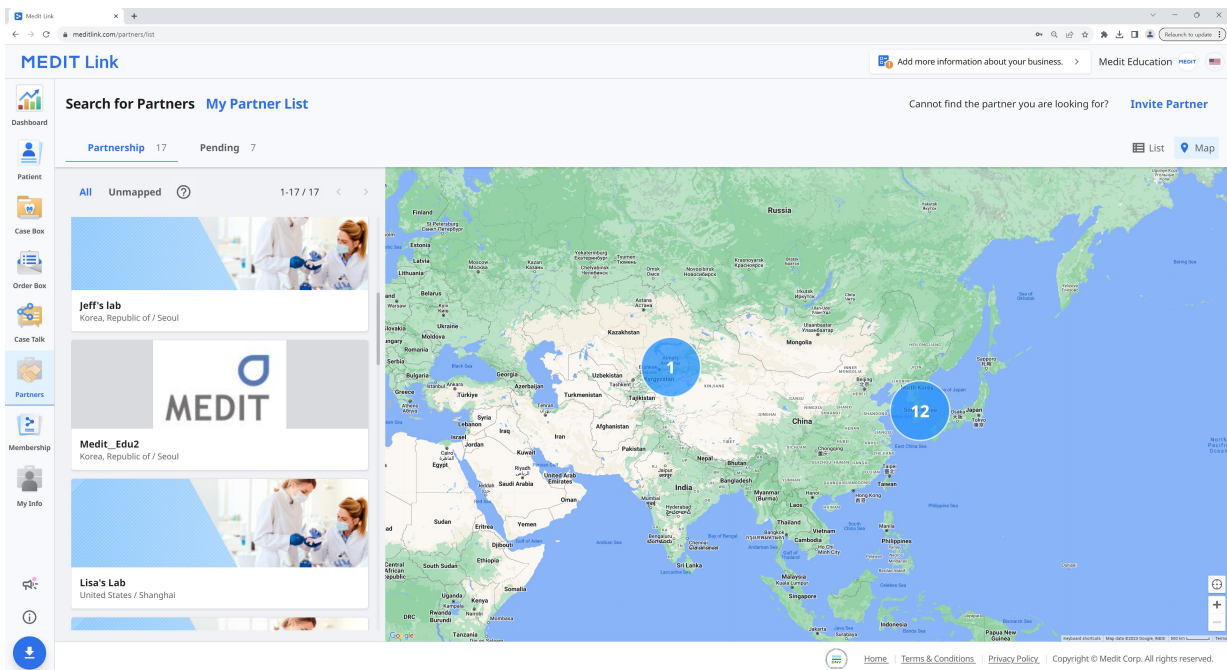

Partnerinbjudan

Om det finns en klinik eller ett labb som du skulle vilja arbeta med kan du bjuda in dem att registrera sig hos Medit Link. Partnerskapet bildas automatiskt när de accepterar inbjudan.

1. Klicka på "Bjud in partner" längst upp till vänster på skärmen.
2. Ange e-postadressen till det företag som du vill arbeta med och skicka en inbjudan med en partnerskapsförfrågan.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. När den inbjudna organisationen accepterar inbjudan och registrerar sig för Medit Link kommer partnerskapet att upprättas automatiskt.

Membership

Medit Links medlemspolicy syftar till att etablera en mer omfattande digital miljö, som successivt expanderar till att tillhandahålla olika tjänster baserade på molnplattformen.

Vi strävar efter att ge våra kunder en mer konsekvent och personlig upplevelse med vår nya medlemspolicy.

Det finns två medlemskapsplaner tillgängliga:

Standard

- Gratis standardplan för alla registrerade användare
- 1 GB molnlagring
- För nya användare

Premium

- Betalplan
- 10 GB molnlagring
- För användare med många fall och olika data
- En månads gratis provperiod

	Standard	Premium
Molnlagring	1 GB	10 TB
Månadsavgift	Gratis	0,99 USD/månad

* I molnlagringen inräknas inte utrymmet som tas upp av rådata.

Obs

Medlemskapsplanerna finns tillgängliga för Medit Link China. Du kan ta del av premiumplanen gratis fram till funktionens officiella release.

Medlemskap

The screenshot displays the Medit Link membership interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, and My Info. The main content area is divided into two panels. The 'My Plan' panel on the left highlights the 'Standard Free' plan with an illustration of a person using a smartphone. It lists three benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is located at the bottom right of this panel. The 'Cloud Storage' panel on the right features a circular progress indicator showing '558.87 MB / 1 GB'. Below this, there are two expandable sections: 'Raw Data' (27.50 GB) and 'Result Files & Attachments' (558.87 MB), each with a 'Delete' button. The top of the dashboard includes a navigation bar with 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem' tabs. The footer at the bottom contains links for 'Home', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Corp. All rights reserved.'

Min plan

I avsnittet till vänster kan du se din nuvarande medlemskapsplan. Du kan också när som helst ändra status på din medlemsprenumeration.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Molnlagring

I avsnittet till höger kan du hantera din molnlagring.

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ Raw Data 147.52 GB

Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ Result Files & Attachments 13.74 GB

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.


Ställ in period	Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden. • Alla: Se alla filer. • 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan. • 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan. • 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan. • 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.
Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i diagrammet. Du kan även hantera rådata härifrån vid behov, t.ex. radera data för att skydda patientens privata uppgifter.

Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra utrymme.


Prenumerera

Om du för närvarande har Standardplanen eller Premiumplanen med en inlösenkod kan du prenumerera på Premiummedlemskapet.
Betalningen gör du via Stripe-tjänsten (www.stripe.com).

1. Klicka på knappen "Prenumerera".

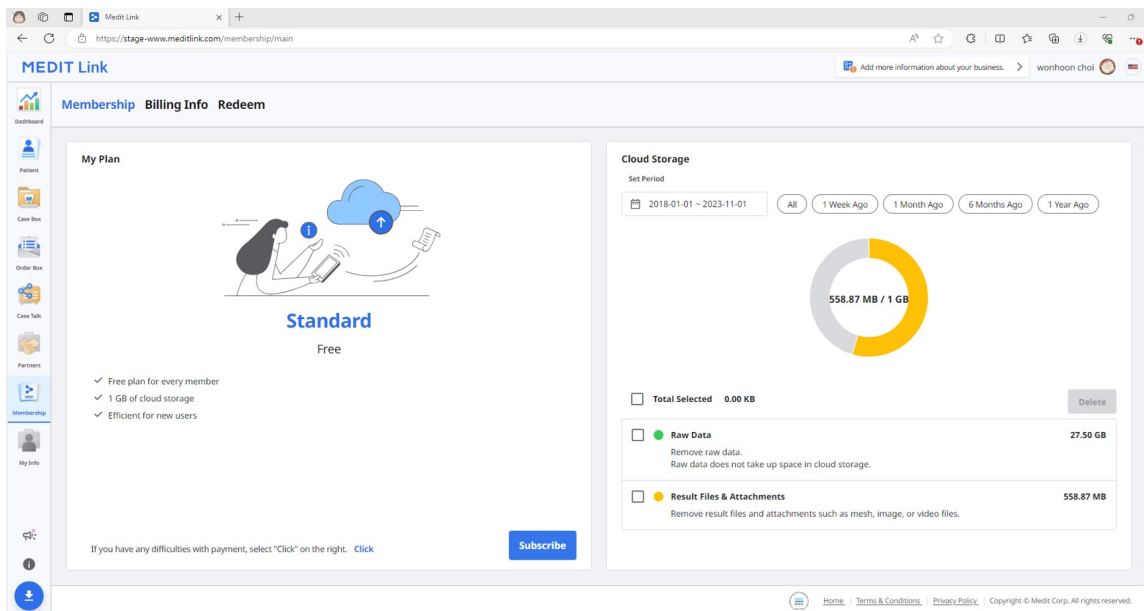

2. Markera Premium-planen och klicka på "Prenumerera" igen.

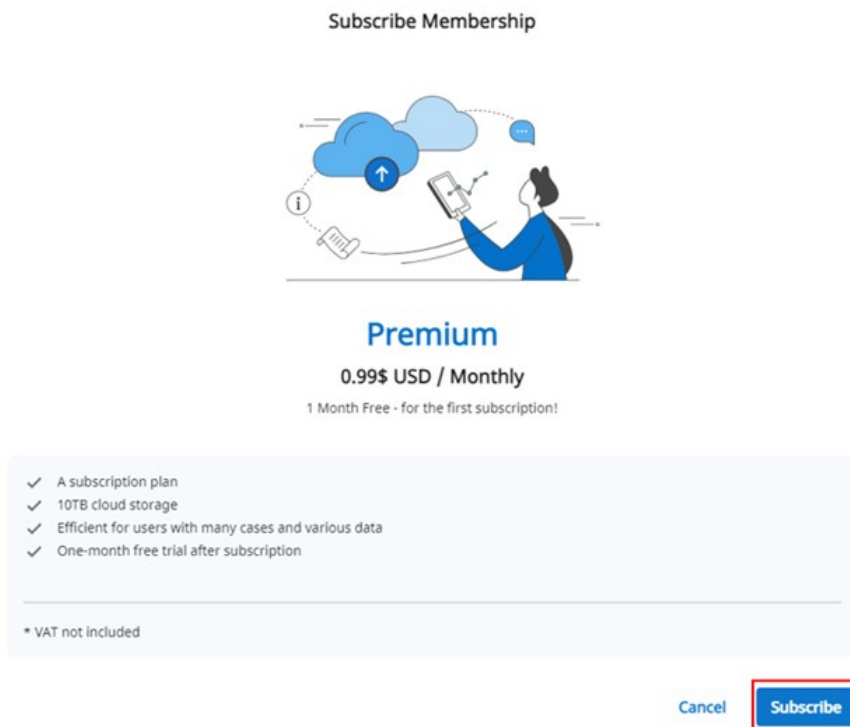

3. Kontrollera pris och villkor och ange nödvändiga uppgifter för betalningen. Klicka sedan på "Prenumerera".

←

MEDIT Link

TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic

Billed daily

\$0.99

Subtotal

\$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription

100% off for a day

-\$0.99

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

1234 1234 1234 1234

VISA

MasterCard

Amex

Discover

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Name on card


Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe


By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

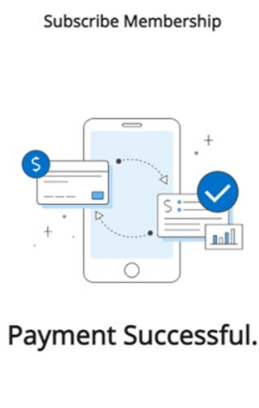

Avsluta prenumerationen

1. Klicka på "Avsluta prenumerationen".

My Plan

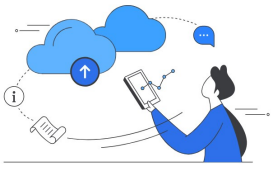

Premium

Free

The first month is free if you join the membership.

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

The following payment date is 2023-11-30. [View More](#)
If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Unsubscribe](#)

2. Klicka på "Avbryt prenumeration".

Cancel Subscription



Premium
In Use



Standard
Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

3. För att bekräfta att du vill avsluta prenumerationen, klicka på "Avbryt prenumeration" igen i det nya popup-fönstret.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

4. Prenumerationen har avbrutits.
5. Planen kommer att ändras till Standard från och med nästkommande betalningsdag, och molnlagringen kommer att begränsas till 1 GB. Om molnlagringskapaciteten överskrids kommer filerna inte att säkerhetskopieras och beställnings- och delningsfunktionerna kommer inte att vara tillgängliga.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Faktureringsinformation

Du kan kontrollera betalningshistoriken för medlemsprenumerationer, inklusive fakturan för varje betalning. Du kan också lägga till eller ändra betalningsmetoden, som kommer att tillämpas från och med nästa schemalagda betalning.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Så lägger du till en betalningsmetod

1. Klicka på "Redigera betalningsmetod".

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Klicka på "Lägg till betalningsmetod".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Ange efterfrågade uppgifter och klicka på "Lägg till".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Den nytilagda betalningsmetoden kommer att ställas in som standard och användas för nästa betalning.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Så ändra du betalningsmetod

1. Klicka på ikonen för utökad meny bredvid den betalningsmetod du vill ändra i faktureringsdialogrutan.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day


Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Klicka på "Ange som standard" för att ange det valda kortet som standardbetalningsmetod.

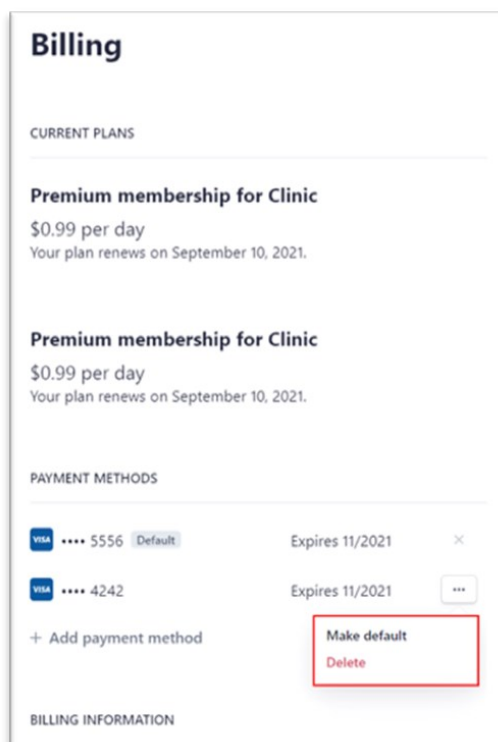


Utnyttja


Registrera inlösenkoden som tillhandahålls som en del av kampanjen. Du kan använda Premiummedlemskap med inlösenkod.

Registrera inlösenkod

1. Ange inlösenkoden och klicka på "Registrera".

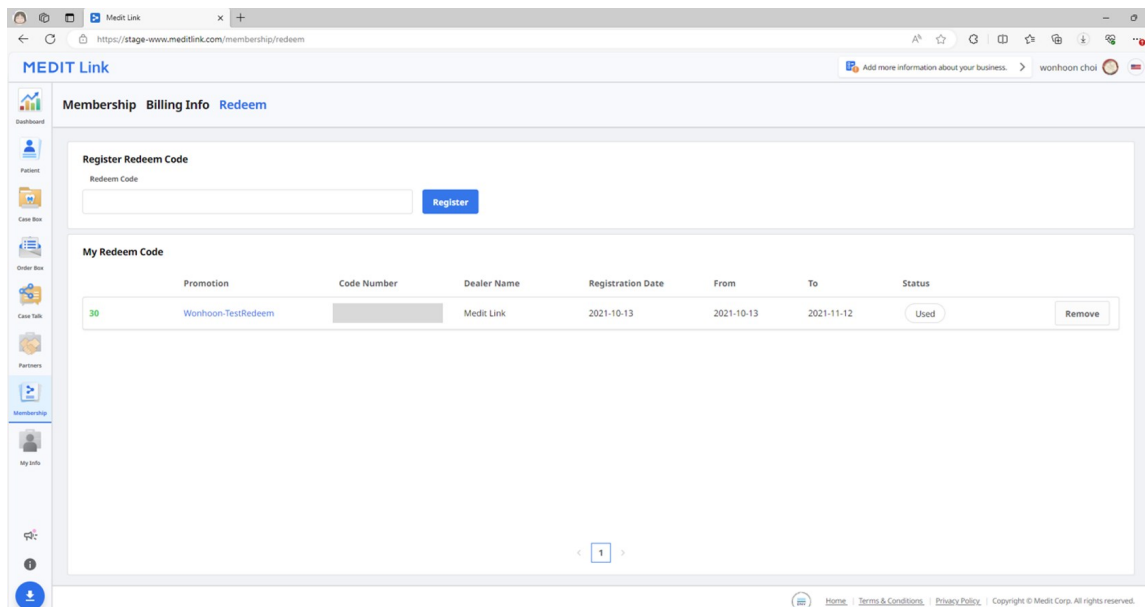

2. Läs meddelandet och välj "Registrera" eller "Tillämpa" i popup-rutan.
 - Registrera: Registrera inlösenkoden. Du kan aktivera och använda inlösenkoden senare efter registrering.
 - Tillämpa: Registrera och aktivera inlösenkoden. Kampanjrabatten gäller direkt.

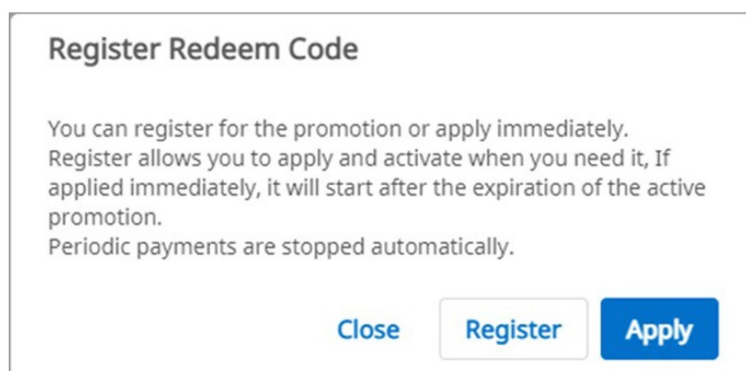

Aktivera inlösenkod

Du kan registrera flera inlösenkoder, men du måste aktivera den du vill använda.

1. Klicka på knappen "Aktivera" bredvid koden du vill använda.
 - Om det inte finns någon kod med statusen "Activated" kommer den du väljer att tillämpas omedelbart.
 - Om det finns en redan aktiverad kod ändras den nyvalda koden till "Waiting". När den för närvarande aktiverade inlösenkoden går ut kommer den nya lösenkoden i status "Waiting" att aktiveras automatiskt.



Endast en inlösenkod kan aktiveras, och endast en kan vara i status "Waiting".

My Info

Mitt konto

Du kan granska och redigera informationen du angett vid registreringen och kontrollera din medlemsstatus.

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Account Information



Email Address
wonhoon.choi@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name
wonhoon choi

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information [Subscribe](#)

My Info

Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)

Du kan granska och redigera informationen om din klinik eller ditt labb. Det här avsnittet är endast tillgängligt för administratörskonton.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My AccountMy ClinicMy Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Min skanner

Här kan du se information om enheten som är ansluten till kontot.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My AccountMy ClinicMy Scanner

Add more information about your business.

seolah.jeon

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Date	Days Left	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Annan meny

Notifiera & uppdatera

Här kan du läsa viktiga meddelanden från Medit och få programuppdateringar av Medits programvara.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Information från Medit

Här får du information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, som Medit Academy, Medit Academy YouTube och Medit Help Center.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >

Ladda ner Medit Link-appen

Du kan ladda ner den senaste versionen av installationsprogrammet från webben. Den här menyn är användbar om du förlorat installationsprogrammet som ingår i produktpaketet, eller om du har ett föråldrat installationsprogram.

48

 Obs

Medit Link uppdateras automatiskt när du har en internetanslutning.



Windows

macOS

Översikt

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Titelfält	Se Medit Link-appen > Titelfält för detaljerad information.
2	Meny	Se Medit Link-appen > Meny för detaljerad information.
3	Verktyg och funktioner	Se Medit Link-appen > Filvisning och Medit Link-appen > Visa alternativ för detaljerad information.
4	Fallista	Se Medit Link-appen > Filtrering och sök för detaljerad information.

Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.

Kontotyp		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Klinikkonton	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Medlem	O	O	X	X	X	O	O * Endast återställningsfunktion	O
Labbkonton	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Medlem	X	X	X	X	O	O	O * Endast återställningsfunktion	O

Titelfält

Titelfältet ger snabb åtkomst till funktioner som kontoinformation, aviseringar, meddelanden och uppdateringar, inställningar och nätverksstatus.



Min information

Min information visar grundläggande information som profilbild, klinik- eller labbnamn, e-postadress och användarnamn.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Aviseringar

Du kan se aviseringar relaterade till partnerskap, beställningar och arbetsprocesser.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Markera rutan för att endast visa olästa meddelanden. |
| 2 | Du kan klicka på en avisering och direkt gå till det relaterade fallet eller den kopplade webbsidan. |

Notifiera & uppdatera

Här kan du läsa viktiga meddelanden från Medit och få programuppdateringar av Medits programvara.

Inställningar

I dialogrutan Inställningar kan användare konfigurera programmet.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Se [Medit Link App > Inställningar](#) för detaljerad information om alternativet Inställningar.

Nätverksstatus

Med Medit Link kan du sömlöst använda alla funktioner i tjänsten när du är uppkopplad mot ett nätverk.

För att hjälpa dig att kontrollera statusen för din nätverksanslutning i realtid, visas nätverksstatusikonen i titelfältet.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐

 Work Offline

Close

Om nätverksanslutningen inte är bra uppstår följande begränsningar:

- Vissa funktioner är begränsade, som fallbeställning, fallskapande, delning via Case Talk och

molnsynkronisering.

- Försämrade nätverksmiljö kan reducera tjänstens övergripande prestanda.

Upplever du detta kan du använda offlineläget för att utföra grundläggande uppgifter och sedan använda de funktioner som kräver internet när du är uppkopplad.

Obs

Nätverkshastighetssymbolen visar svarshastigheten mellan det aktuella området och AWS (Amazon Web Service). Det visar dock inte din nätverkshastighet, varför din status ibland kan visas som svag eller dålig, även när din nätverkshastighet är tillräckligt hög.

Om det finns annan process som också använder samma nätverk kan hastigheten visas som svag eller dålig, och den övergripande prestandan för Medit Link kan vara dålig. Upplever du detta, undvik att dela nätverket med andra processer.

Till exempel tar funktionen "Ladda upp rådata" en stor del av nätverksprocessen. Om symbolen visar statusen som svag eller dålig, gå till Inställningar > Ladda upp rådata och avaktivera "Ladda upp automatiskt".

Inställningar

Allmänt

Visar alternativ för övergripande systeminställningar.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

☒ Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

☒

Apply


Close

Spara mapp	Ange en mapp för att lagra dataresultaten skapade i Medit Link och anslutna program.	
Språkinställningar	Välj programspråk.	
Tandmarkering	Välj mellan tandmärkningssystemen FDI och US.	
Aviseringar	När detta är markerat får du aviseringar om programuppdateringar.	
Ladda upp rådata	När detta är markerat laddas rådata automatiskt upp till molnet. Det gör att du kan säkerhetskopiera originaldata och utföra sömlös skanning när du använder Medit Link med samma konto på en annan dator. Den ursprungliga molnbackupen av dina data gäller endast data som förvärvats i Medit Scan for Clinics.	
Snabbskanning	Välj om du vill att skanningsstadierna nedan ska visas automatiskt i Medit Scan for Clinics utan att behöva fylla i forminformation. • Pre-op för överkäke • Pre-op för underkäke • Ansiktsskanning	
Visningsalternativ	Avancerad rendering	När denna är markerad visas 3D-modellen i en mer levande och realistisk rendering.
	Justera färgtextur	Justera 3D-modellens ljusstyrka. * De resulterande färgerna kan skilja sig något från Medit Link när du öppnar samma data med ett annat program.
Program för att förbättra användarupplevelsen av Medit	Gå med i programmet för att förbättra användarupplevelsen av Medit. • Vi använder den insamlade informationen för att förbättra våra produkter och tjänster. • Vi samlar inte in någon information som identifierar individer.	

Standardsida efter inloggning	Välj den standardmeny som ska visas när du startar programmet. • Klinikkonton kan välja mellan Patient och Case Box • Labkonton kan välja mellan In Box och Work Box
-------------------------------	--

Lagringshantering

Kontrollera och hantera det lokala lagringsutrymmet och molnlagringsutrymmet.

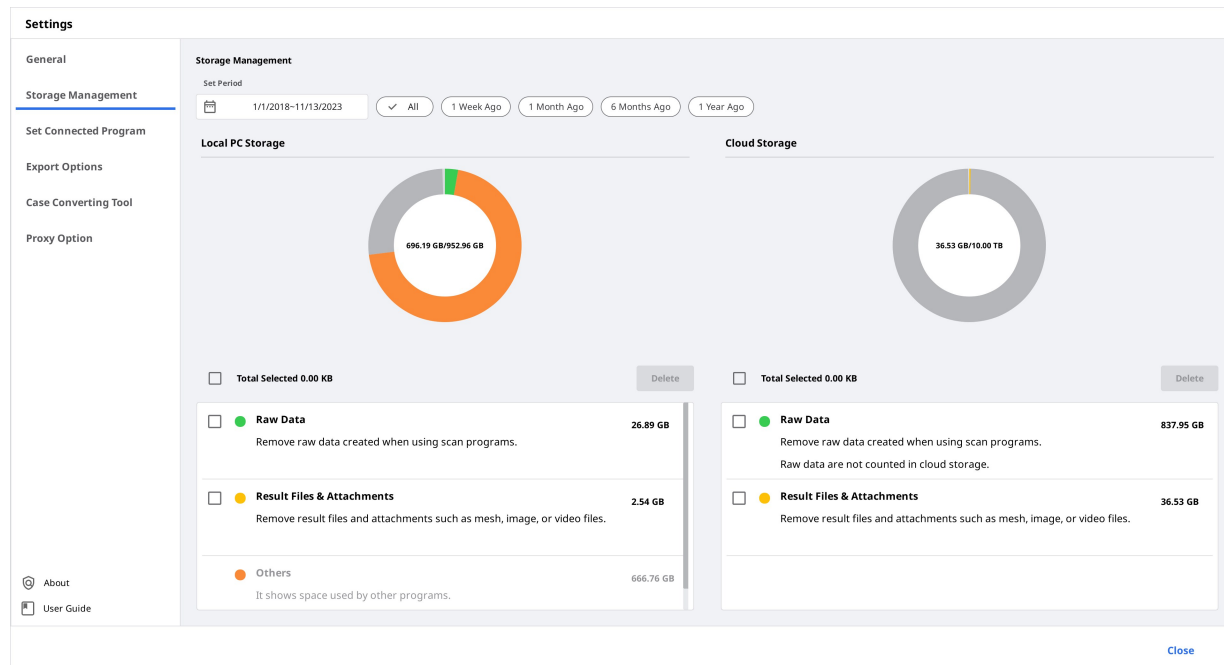

Ställ in period

Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden.

- Alla: Se alla filer.
- 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan.
- 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan.
- 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan.
- 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.

Lokal lagring

Hantera lagringsutrymmet på datorn.

Rådata	Ta bort den valda rådatan från datorn. Om rådatan redan är uppladdad till molnet kan du ladda ner och använda den när du vill.
Resultat & bilagor	Ta bort resultat- och bifogade filer från datorn, såsom mesh, bilder och videor. Om dessa filer redan har laddats upp till molnet kan du ladda ner och använda dem när du vill.
Övriga	Se vilka filer som används för att styra systemet och andra program. Visar lagringen på din dator. Du kan inte ta bort dessa filer i Medit Link.
Radera	Ta bort valda filer från datorn.


Molnlagring

Hantera molnlagringsutrymmet.

Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i diagrammet. Men du kan hantera rådata härifrån om det behövs, t.ex. radera den för att skydda patientens privata information etc.
Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Köp lagringsutrymme	Om du har standardplanen kan du välja Premium för att utöka din molnlagring.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra lagringsutrymme.

Ställ in anslutna program

Hantera programmen som stöder integration i Medit Link.

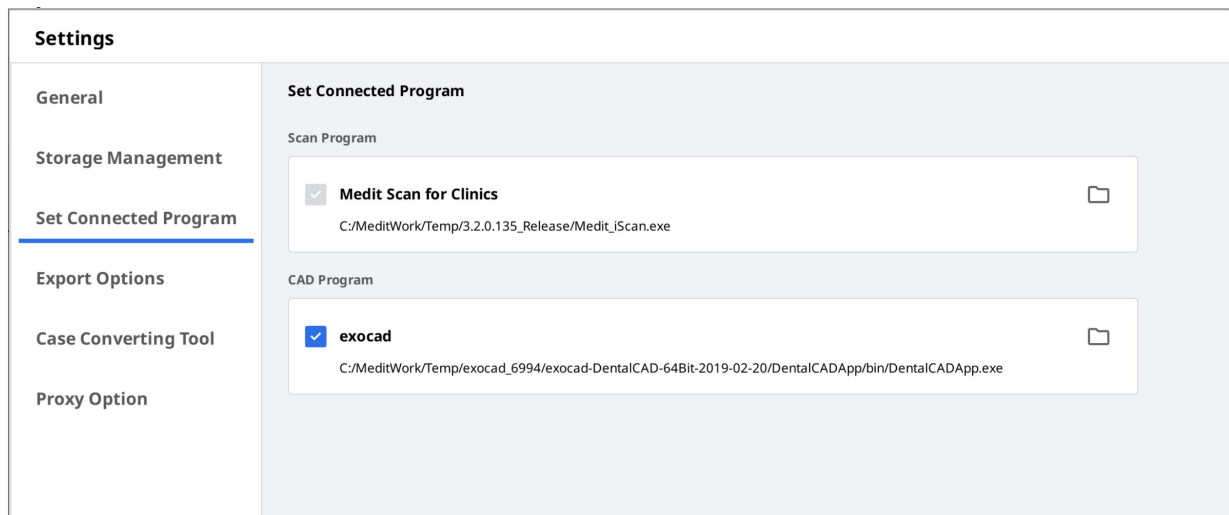

Du kan ansluta följande program:

	Klinikkonto	Labbkonto
Skanningsprogram	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CAD-program	exocad	exocad



Obs

Integrering av följande tjänster är inte tillgängligt med Medit Link för Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Exporteringsalternativ

Ställ in hur filer ska exporteras från Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGam_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

CAD-typ	Välj det CAD-program du vill använda för att designa. Programmet kommer att justera resultaten baserat på ditt val, så att du kan fortsätta med designen utan ytterligare axeljustering.
Exportera filer till	Ange sökvägen till där du vill lagra resultaten.
Meshformat	Ange formatet för den slutliga mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera & kombinera	Komprimera filer: Komprimera alla resultat till en enda fil. Kombinera individuell mesh: Kombinera överkäkes- eller underkäkesresultat till en enda fil. När du använder vissa program som inte kan importera och arbeta med flera filer, kan du slå ihop dem till en enda för att kunna arbeta med dem i dessa program.
Alternativ för när samma mapp eller fil redan existerar.	Välj standardåtgärden för fall där samma mapp eller filnamn finns i målsökvägen. • Fråga alltid vid exportering. • Exportera en ny fil och skriv över befintliga filer. Filen som finns lagrad kommer att gå förlorad. • Skapa en mapp och exportera filerna
Regler för mappnamn	Definiera regler för att skapa ett mappnamn vid export av filer. De angivna reglerna kommer att tillämpas på mappnamn, och den exporterade filen kommer att sparas i den skapade mappen. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID

58

Regler för filnamn	Definiera namnregler för exporterade filer. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID
--------------------	---

Fallkonverteringsverktyg

Du kan flytta fall mellan olika konton genom att exportera befintliga fall på kontot eller importera fall som exporterats från andra konton.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To
C:/Users/김영환/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

Exportera fall

Exportera fall från det konto du är inloggad på till den lokala datorn.

1. Öppna Medit Link och klicka på ikonen Inställningar.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Total Patients: 3500

All All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

View Options

2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. Ange en period i avsnittet Exportera eller sök efter fall att exportera vid behov.

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스

☐ TEST111's Case

☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. Välj de fall som du vill exportera från listan i avsnittet "Filer att exportera".

Export

1/1/2018~11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Ange filnamnet genom att redigera fallnamnet i fältet Filnamn.
6. Ange målmappen dit de valda fallen ska exporteras.
7. Klicka på "Exportera".
8. Klicka på "Ja" för att öppna mappen dit filen ska exporteras.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. De exporterade fallen sparas i .meditex-filformat.

Importera fall


1. Öppna Medit Link och klicka på ikonen Inställningar.

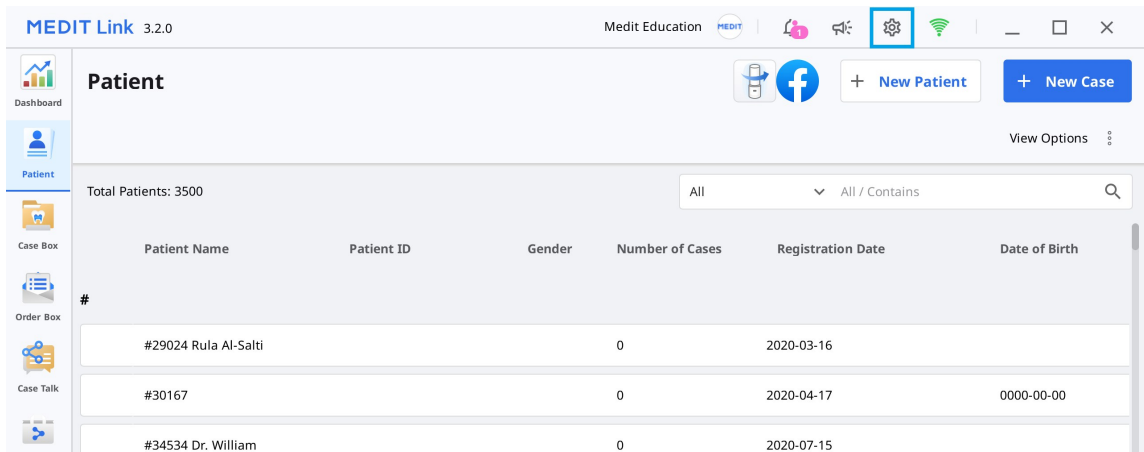


2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

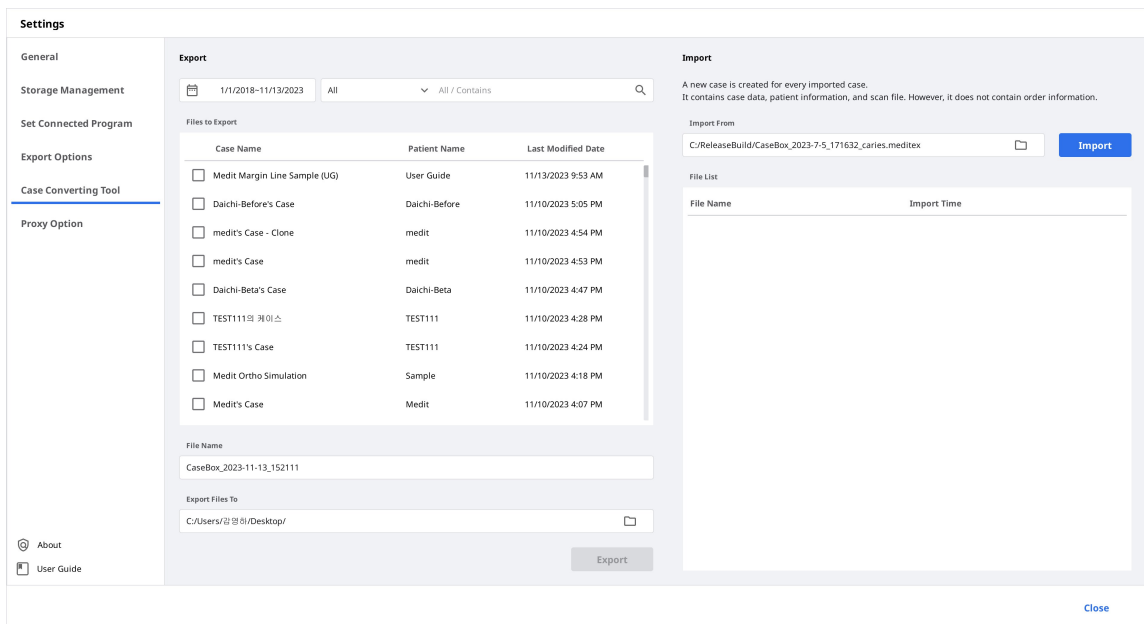

3. I importsektionen klickar du på mappikonen på din dator för att söka efter den .meditex-fil som du vill importera.

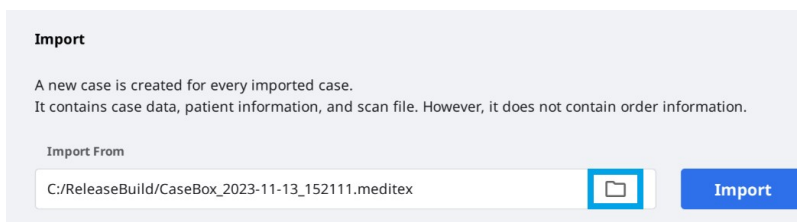

4. Klicka på knappen "Importera" och markera de filer du vill importera i listan nedan.

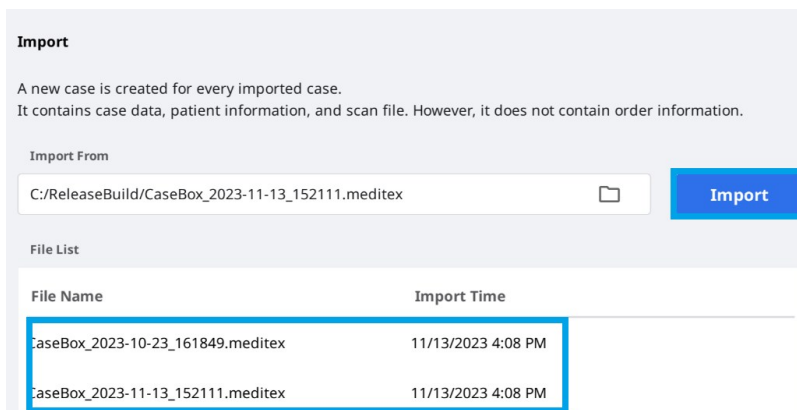

5. Det importerade fallet kommer också att visas i din Case Box (klinikkonto) eller Work Box (labbkonto).

Proxyalternativ

I vissa begränsade nätverksmiljöer kan du ändra nätverksinställningar.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Proxy Option' tab selected. The 'Proxy Server' toggle is turned on. Below it, there are input fields for 'Proxy Server IP (or DNS)', 'Proxy Server Port' (set to 0), and 'Proxy Server Scheme' (set to HTTPS). There are also optional fields for 'Proxy Server Username' and 'Proxy Server Password'. An 'Apply' button is at the bottom right. The left sidebar contains links for 'About' and 'User Guide'.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Apply

About

User Guide

Close

Om

Visa detaljerad information om Medit Link.

The screenshot shows the 'About' window for Medit Link Beta. It features the Medit Link logo, version information (v 3.2.0 Build 107), and a link to the website (https://www.medit.com/). There are also links for 'Terms & Conditions' and 'Open Source License'. A checkbox for 'Send Anonymous Usage Statistics' is checked. A 'Close' button is at the bottom right.

About

MEDIT Link *Beta*

v 3.2.0 Build 107
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Användarguide


Hämta användarguiden för Medit Link.

För att öppna användarguiden krävs en internetanslutning.

Meny

Dashborad

Du kan se statistiken för hela arbetet med Medit Link i visualiserade grafer och diagram – både i Medit Link-appen och på webben.

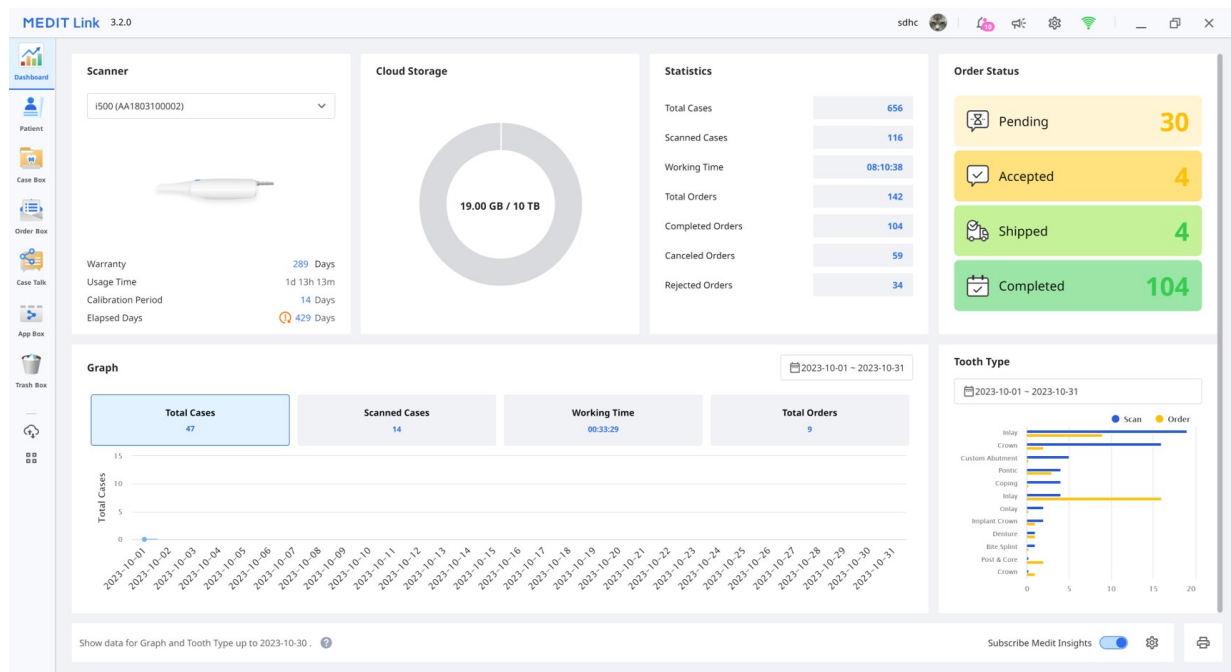

Obs

Se [Medit Links webbsida > Dashboard](#) för mer information om Dashboard och Medit Insights.

Patient

I menyn Patient kan du lägga till, redigera, ta bort och sammanfoga patienter.

The screenshot shows the Medit Link 3.2.0 Patient management interface. It features a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main content area includes:

- Patient:** A section with a 'Total Patients: 106' and a 'View Options' dropdown.
- Patient List:** A table with the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table is filtered by 'All' and 'All / Contains'.

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Lägg till ny patient

1. Klicka på "Ny patient".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. Fyll i den nödvändiga informationen i dialogrutan "Ny patient" och klicka sedan på "Spara".

Radera patient



Du kan radera en patient om det inte finns några fall för patienten.

1. Välj den patient du vill radera från listan.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb [User Profile] [Notifications] [Settings] [Wi-Fi] [Mobile Data] [Battery]

[Dashboard] [Patient] [Case Box] [Order Box] [Case Talk]

Patient

[Edit] [Delete] [Merge Patients] Selected Patients: 2 [All / Contains] [Search Icon]

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
T t	☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
	☒ Temporaries				0	2023-10-04		⋮
	☒ T.O.P	카피본		1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. Klicka på "Radera".

Sammanfoga patienter

Du kan slå samman alla fall med flera patienter till en enda patient.

1. Välj de patienter du vill slå samman från listan.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

▼

All / Contains

🔍

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tornita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	키링	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Klicka på "Slå samman patienter".
3. Välj den målpatient för vilken du vill slå samman alla fall.

4. Alla fall slås samman till målpatienten och patientinformationen för målpatienten bibehålls.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klicka på "Tillämpa" för att utföra sammanslagningen.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Teeth Arch

Type Method Material Shade Favorites

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

Cancel Save

- 1 Visar fallets namn och patientens namn.
- 2 Tillhandahåller tillgängliga huvudfunktioner: Beställ/Skanna(Öppna)/beställningsknappar och appikoner.
- 3 Visar tillgängliga flikar: Form, CAD och Filvisning.
- 4 Visar funktioner för fall- och filhantering.
- 5 Visar formulärregistreringsgränssnittet för det valda CAD-programmet.
- 6 Visar typ/metod/material/nyansinformation som användare kan välja för det valda tandnumret.
- 7 Visar typ/metod/material/nyansinformation som tillämpas på de valda tänderna.

Tabbar i Case Box/Work Box

Form	CAD	Filvisning
------	-----	------------

Fliken Form tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ange grundläggande information för skanningsarbete, såsom typ, metod, material för tandnummer och skanningsalternativ. Informationen du anger skickas till det anslutna skanningsprogrammet och används som beställningsinformation när du gör en beställning hos din partner.	CAD-fliken tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ställa in CAD-alternativ. Informationen du ställer in skickas till det anslutna CAD-programmet.	Visar resultatfiler som genererats av skanningsprogram och CAD. Filvisaren visar och hanterar hämtade och bifogade 3D-modeller och 2D-bilder.
---	---	--


Funktioner i Case Box/Work Box

Följande funktioner finns för Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till detalj	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Fallhistorik	Visar detaljerad information om fallhistoriken. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Radera	Radera fallet. Du kan inte radera beställda fall eller fall skapade offline.
	Klona	Skapa en dubblett av det aktuella fallet i Case Box. All data kopieras till det klonade fallet. Med den här funktionen kan du replikera behandlingsinformation för samma patient eller göra en extra beställning med samma information eller filer.
	Bifoga	Bifoga filer i olika format.
	Exportera	Exportera skannings- eller CAD-resultatfiler till datorn. Du kan välja önskat filformat när du exporterar filer. De exporterade filerna kan användas i CAD- och CAM-program för vidare arbete.

	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox och Safari utan att installera ytterligare program. Du kan dela länken fritt med vem som helst eller endast med specifika personer. Du kan ställa in en PIN-kod eller ett utgångsdatum för en länk för att skydda privat information.
	Skicka in supportförfrågan	Öppnar en Medit Hjälpcenter-sida för att skicka in supportförfrågan.

Order Box/In Box

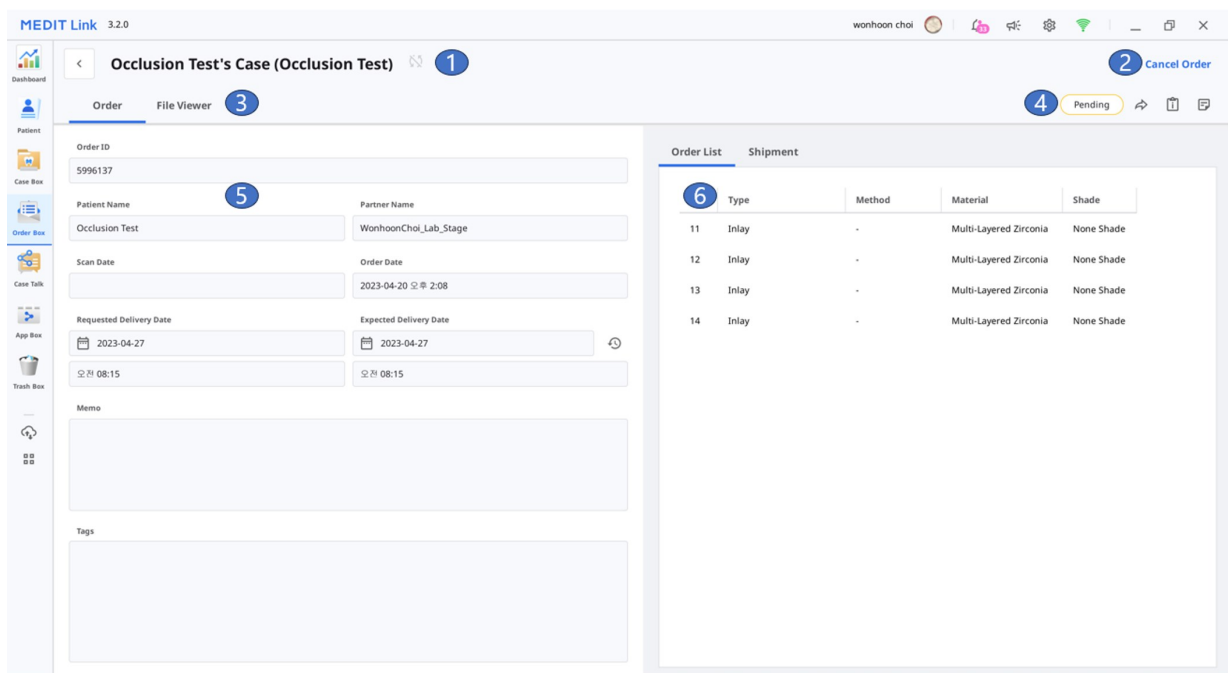

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande).
3	Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning
4	Visa funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc.
5	Visar detaljerad information om beställningar, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och anteckningar & taggar.
6	Visar den beställda produktinformationen och leveransstatus.

Tabbar i Order Box/In Box

Beställ	Filvisning
Kontrollera den detaljerade informationen relaterad till beställningen, såsom ordernummer, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade eller bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.


Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer, med dem som fått den delade länken eller registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista över alla delade fall genom Case Talk i Medit Link-appen och på Medit Link Web.



Tjänsten "Case Talk" kräver en internetanslutning.

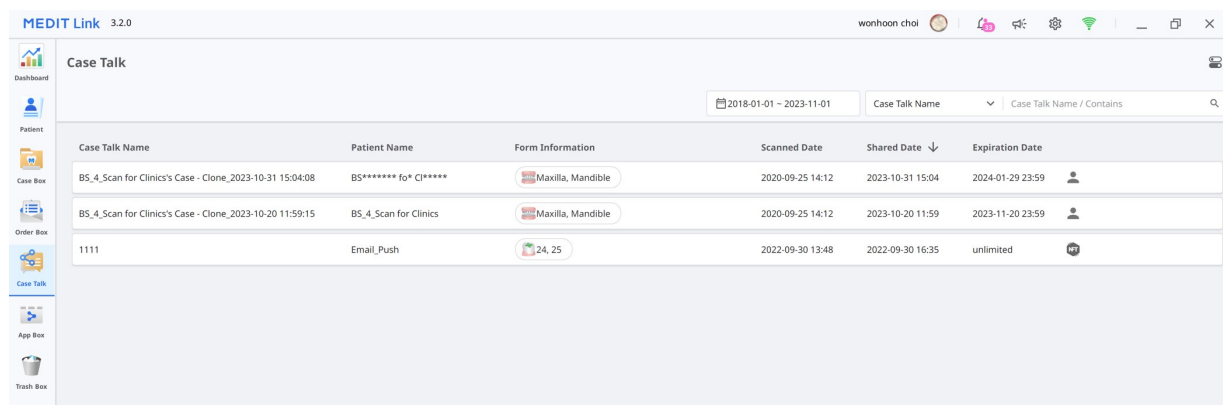

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** fo* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited


Man kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.

App Box

App Box tillhandahåller olika tilläggsprogram som kompletterar ditt vanliga skanningsarbetsflöde och förbättrar produktiviteten.

App Box består av "Medit Apps", som inkluderar Medits egenutvecklade originalappar, och "Partner Apps", som är integrationsappar med Medits partners från olika digital tandvårdssektorer, såsom 3D-utskrift, CAD/CAM-program etc.

Ladda ner tillgängliga appar från Medit Apps och Partners App för att skapa tandutrustning, analysera skanningsdata, som hjälp för konsultation eller för att effektivisera din arbetsprocess.

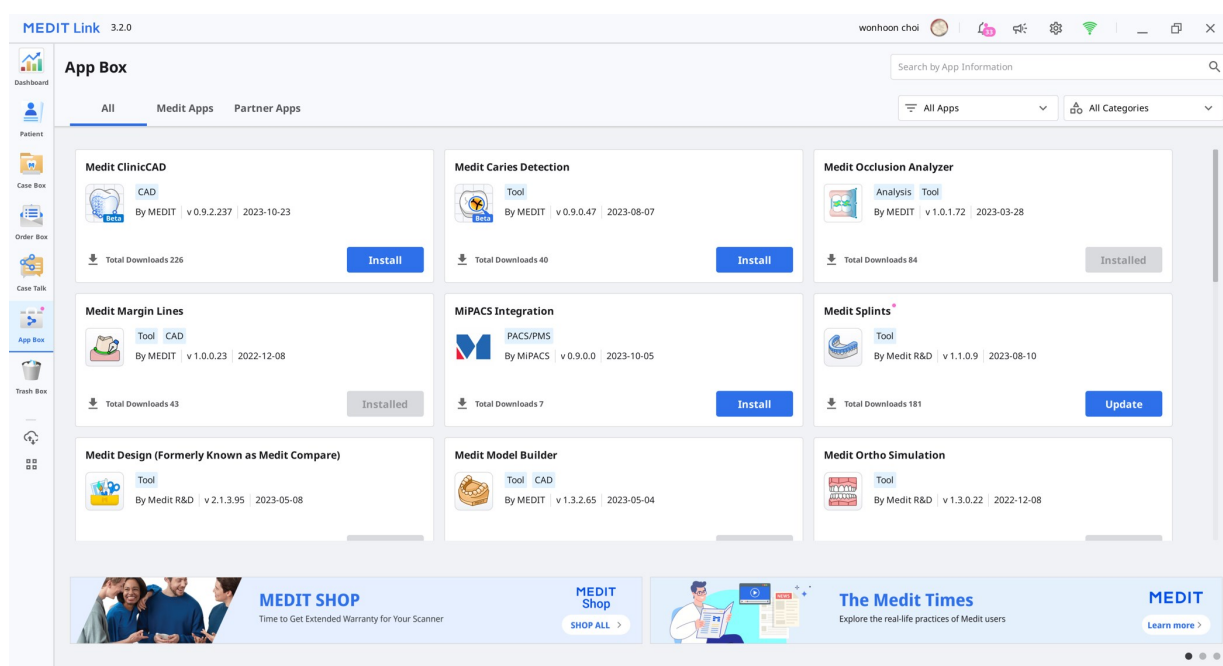

App Name	Category	Version	Status
Medit ClinicCAD	CAD	By MEDIT v 0.9.2.237 2023-10-23	Install
Medit Caries Detection	Tool	By MEDIT v 0.9.0.47 2023-08-07	Install
Medit Occlusion Analyzer	Analysis Tool	By MEDIT v 1.0.1.72 2023-03-28	Installed
Medit Margin Lines	Tool CAD	By MEDIT v 1.0.0.23 2022-12-08	Installed
MIPACS Integration	PACS/PMIS	By MIPACS v 0.9.0.0 2023-10-05	Install
Medit Splints	Tool	By Medit R&D v 1.1.0.9 2023-08-10	Update
Medit Design (Formerly Known as Medit Compare)	Tool	By Medit R&D v 2.1.3.95 2023-05-08	
Medit Model Builder	Tool CAD	By MEDIT v 1.3.2.65 2023-05-04	
Medit Ortho Simulation	Tool	By Medit R&D v 1.3.0.22 2022-12-08	

Trash Box

 **Obs**

Data som raderas från Trash Box raderas permanent från din dator och servern, och kan inte återställas.

Fallsynkroniseringsansvarig

Case Synchronization Manager

Upload Download

Total Count: 240 Cancel All Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status	
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download	
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download	
☐ test's Case111111111111111111111111121312313131233311111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download	
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 类别 - 类别 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download	

Close

Ladda upp

Totalt antal fall/Valda fall	Markera totalt/antal valda fall som ska laddas upp.
Ladda upp allt	Ladda upp alla fall i molnet.
Avbryt alla	Avbryt alla förfrågningar.
	Ladda upp fallet i molnet.
	Avbryt uppladdning av valda fall.
	Försök att ladda upp fallet igen.

Ladda ner


Totalt antal fall/Valda fall	Markera totalt/antal valda fall som ska laddas ned.
Ladda ner allt	Ladda ned alla fall till datorn.
Avbryt alla	Avbryt alla nedladdningsbegäranden.
	Ladda ner fallet till datorn.
	Avbryt uppladdning av fallet.
	Försök att ladda ner fallet igen.

Information från Medit

Du kan gå direkt till menyer som endast finns tillgängliga på Medit Link Web, som My info, Partners och Membership. Se Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) och [My Info](#) för detaljerade beskrivningar av Medit Links webbmenyer.

Du har åtkomst till Medits webbutik, Medit Shop, där du kan köpa utökade garantier för skannrar och andra produkter från Medit såsom skannerrygsäckar.

Du kan också hitta information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, såsom Medit Hjälpcenter, Medit Academy YouTube-kanal och Medit Academy onlineutbildningsplattform.

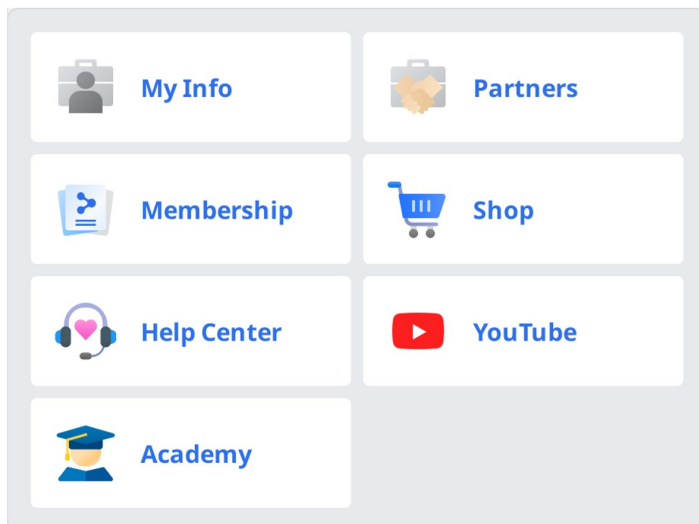

Filvisning

Filvisning grupperar och visar olika data, inklusive data som samlats in från program kopplade till Medit Link och data som bifogats av användare.

Det tillhandahåller grundläggande administrativa funktioner som att visa/dölja data, justera opacitet och radera data.

Det stöder förhandsgranskning av filer i följande format:

- 3D-data: STL, OBJ, PLY
- 2D-bilder: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videofiler: MKV, MP4, AVI, WMV

Dataträd

I dataträdet kan du gruppera och visa all data i fallet. Du kan också visa/dölja data, justera transparens och radera data från dataträdet.

	Visa/dölj	Du kan visa eller dölja data.
	Opacitet	Skjutreglaget visas när du klickar på någon data i dataträdet. Med skjutreglaget kan du justera opaciteten för visade data. 
	Mer	Om du klickar på ikonen Mer visas ytterligare tillgängliga funktioner.  • Visa endast detta: Visa endast motsvarande data och dölj alla andra data. • Dölj: Dölj data. • Duplicera: Kopiera data och lägg till i gruppen som ska bifogas. • Exportera: Exportera valda filer. • Döp om: Ändra namn på data. • Radera: Radera data.







Obs

Du kan ändra namn på data när du är online.

Modellkontrollverktyg

3D-modellkontroll

	Panorera	Flytta modellen.
	Rotera	Rotera modellen.

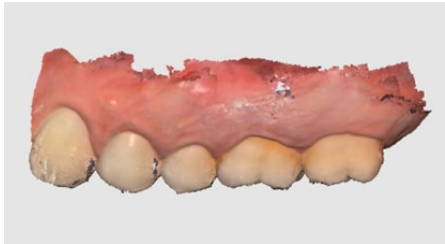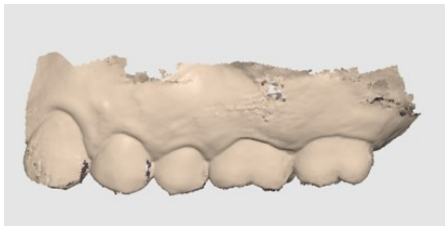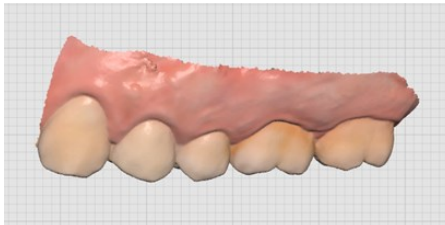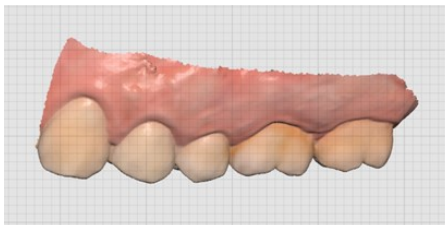	Zooma in/ut		Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom		Placera modellen i mitten av skärmen.
	Modellvisningsläge	Textur på	Visa data i verkliga texturfärger. 
		Textur av	Visa data i en enda färg. 
	Rutnätsinställningar (mm)	Rutnät på	Visar rutnätet i bakgrunden. 
		Lager på	Lägg rutnätet över modellen. 
		Rutnät av	Göm rutnätet.

2D-bildkontroll


	Nästa/Föregående bild	Flytta dig mellan bilder.
	Redigera	Redigera bilden.
 	Nyp/fäst fönstret	Du kan ta loss bildfönstret och flytta det till önskad position. Du kan återställa fönstret. När fönstret återställs till sin ursprungliga plats återgår det till standardstorleken.

Detektionsverktyg

Skärminspelning och memo

Avbilda den aktuella skärmen som en 2D-bild, rita på den eller lägg till anteckningar.

Du kan spara den som en fil med dina anteckningar och skicka den som en referens.

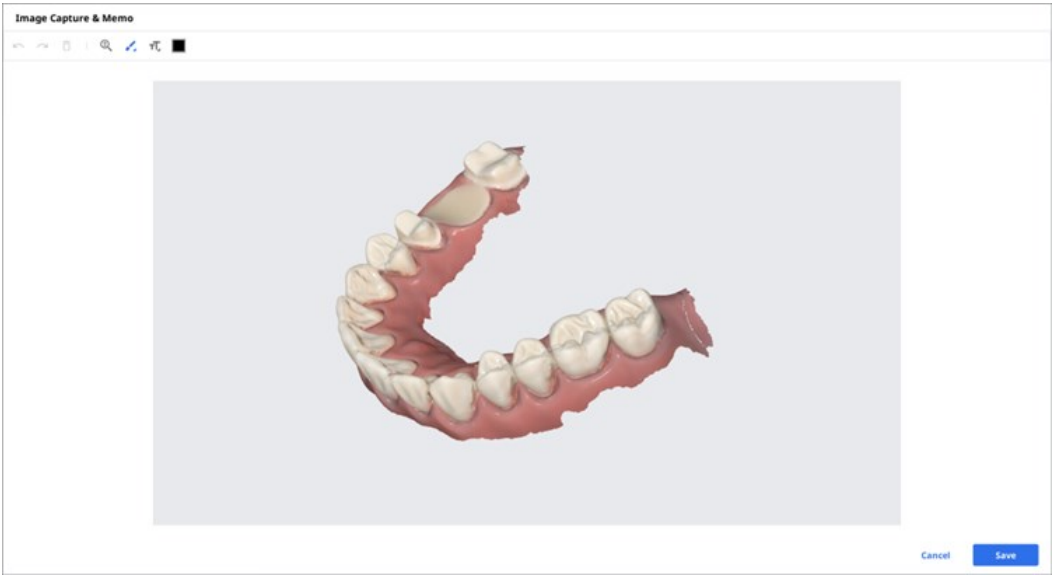

Orto-inspelning


Fånga bilderna i aktuell visningsriktning och uppifrån/nerifrån/från vänster/från höger mot den aktuella visningsriktningen.



Synkroniseringsvisning	När denna är aktiverad kan du rotera och zooma in/ut i mittenbilden. När du flyttar mittenbilden kommer övriga bilder samtidigt att justeras som fasta synvinklar. När denna är avaktiverad kan du panorera, rotera och zooma in/ut i alla bilder en och en.
Spara varje bild separat	Spara varje bild med högkvalitativ upplösning.
Visa textur	Slå på/av texturen för modellen.

Tilldela om data

Ändra data för överkäken/underkäken med hjälp av funktionen Tilldela om data. Du kan använda dina ändrade data för att skapa och använda resultatbilderna från en Orto-inspelning.

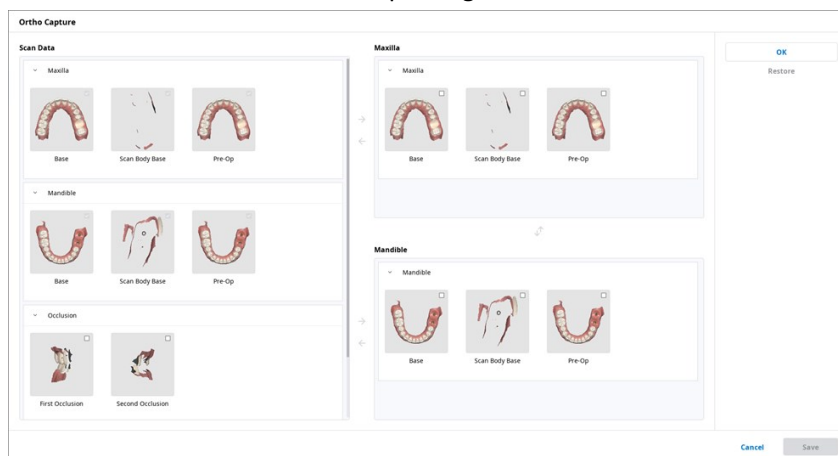

- Skanningsdata: Visar alla skanningsdata för fallet.
- Överkäke: Visar de data du markerat för överkäken.
- Underkäke: Visar de data du markerat för underkäken.


Fyll hål

Fyll hål i 3D-meshdata.



Trimning


Trimning tillhandahåller olika verktyg för dataredigering.

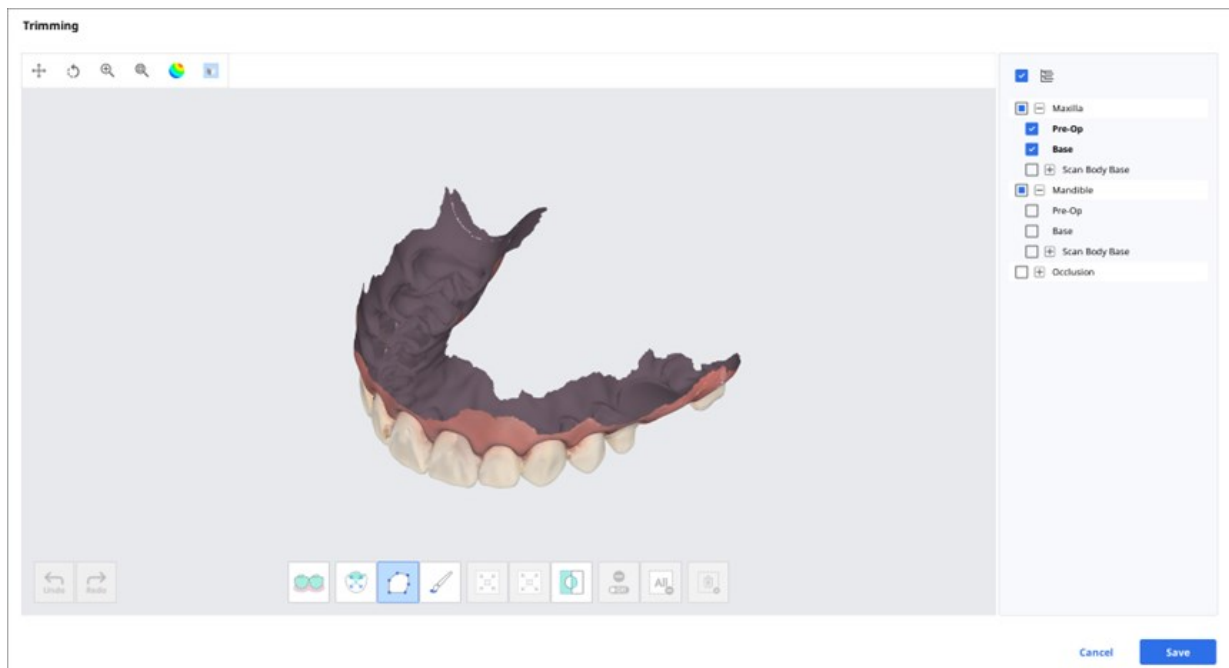

Valda 3D-meshdata kan redigeras med de olika verktygen i fönstrets nederkant.

Markering		Smart tandmarkering	Välj automatiskt alla tänder på käken, och utelämna tandkötsdelarna. Obs Den här funktionen är endast tillgänglig för skanningsdata som har hämtats med Medit Scan for Clinics med alternativet "Använd GPU" aktiverat.
		Smart enskild tandmarkering	Välj automatiskt området för en enskild tand med ett klick. Du kan klicka på eller dra tanden.
		Polyline-markering	Markera alla enheter inom en polylineform ritad på skärmen.
		Penselmarkering	Markera alla enheter på en frihandsritad väg på skärmen. Endast främre området kommer att väljas. Penseln finns i tre olika storlekar.
Justering av valt område		Krymp det valda området	Minska det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Expandera det valda området	Expandera det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Invertera det valda området	Invertera markeringen.
Avmarkera		Markera/Avmarkera	När detta är aktiverat kan du avmarkera området med hjälp av olika verktyg.
		Rensa alla markeringar	Rensa alla markerade områden.
		Radera det valda området	Radera data från det valda området.

1. Välj det område du vill trimma med områdesvalsverktygen.

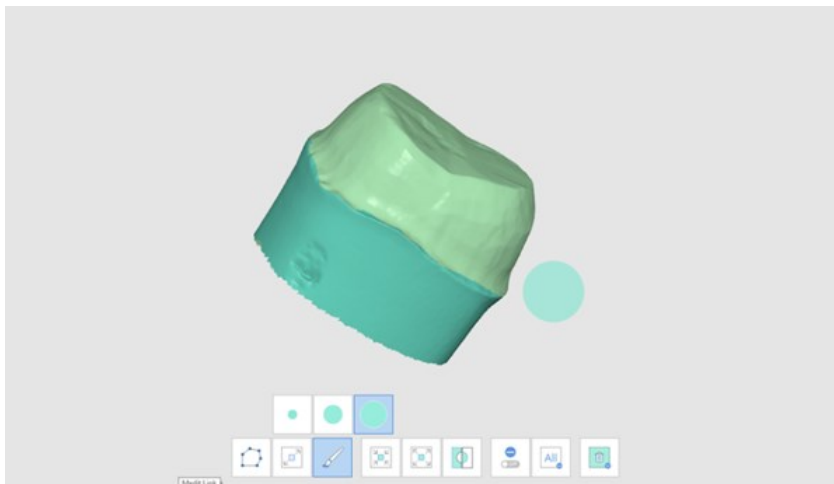


Obs


Verktøget "Polyline-trimning" markerar alla enheter inom en polylinjemarkering ritad på skärmen, medan verktøget "Penseltrimning" endast väljer ansiktsdata framifrån.

2. Du kan inverta, krympa eller utöka urvalet med följande tre verktøg.


- Inverta det valda området

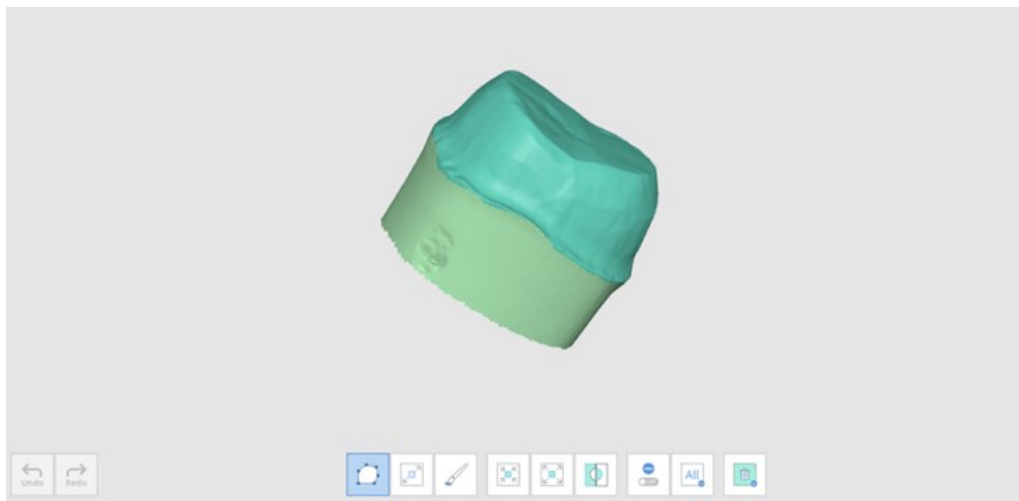

- Krymp det valda området

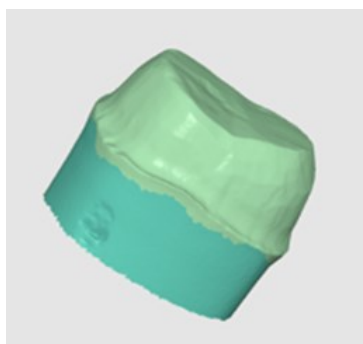


- Expandera det valda området

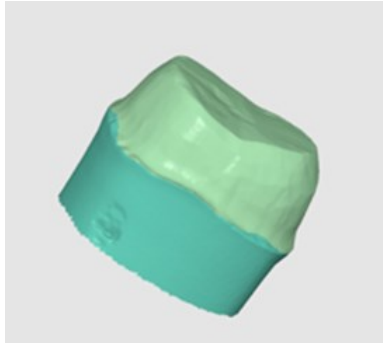

3. Du kan avmarkera de markerade områdena med verktyget Radera det valda området.


Optimera ocklusionsinriktning

Optimera ocklusionsinriktning. Välj måldata och justera ocklusionsinriktningen.

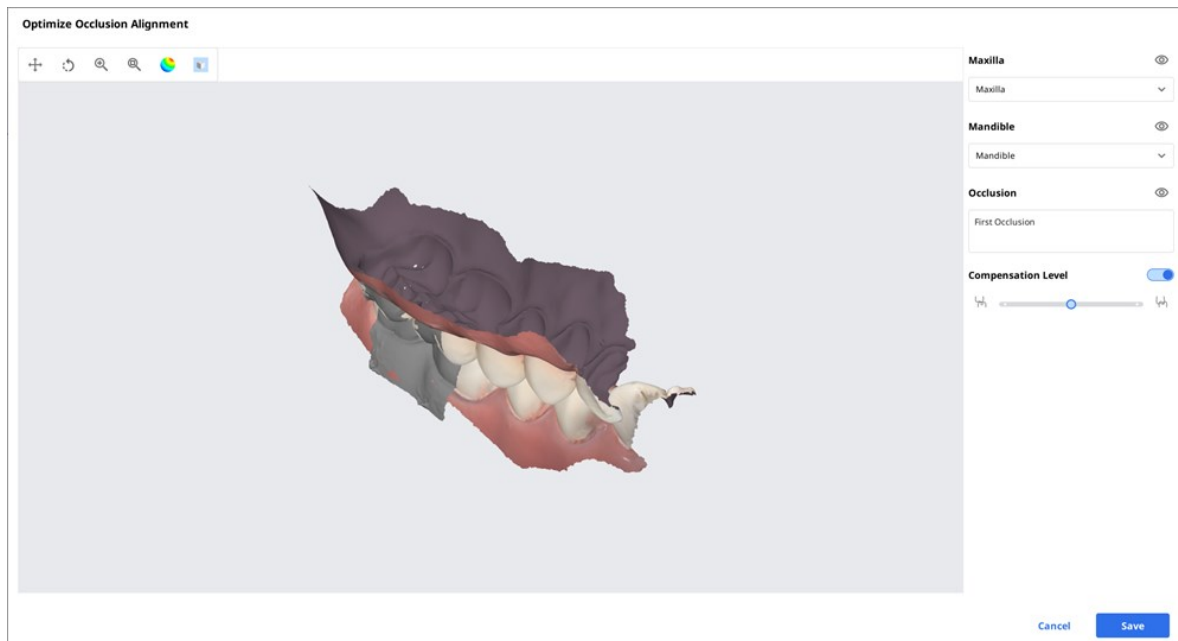


Kompensationsnivå

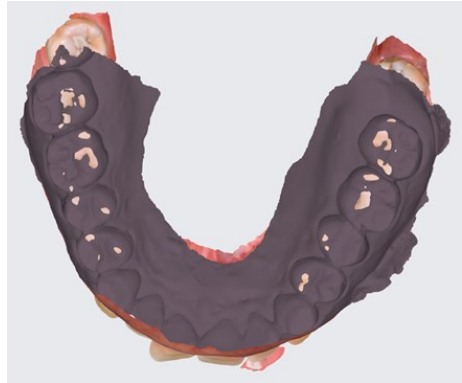

Mellan	Compensation Level 	
Hög	Compensation Level 	
Av	Compensation Level 	

Underkäkesrörelse

Du kan spela upp underkäkesrörelse som registrerats i Medit Scan for Clinics för att se de dynamiska ocklusionskontakterna mellan övre och nedre tänder.

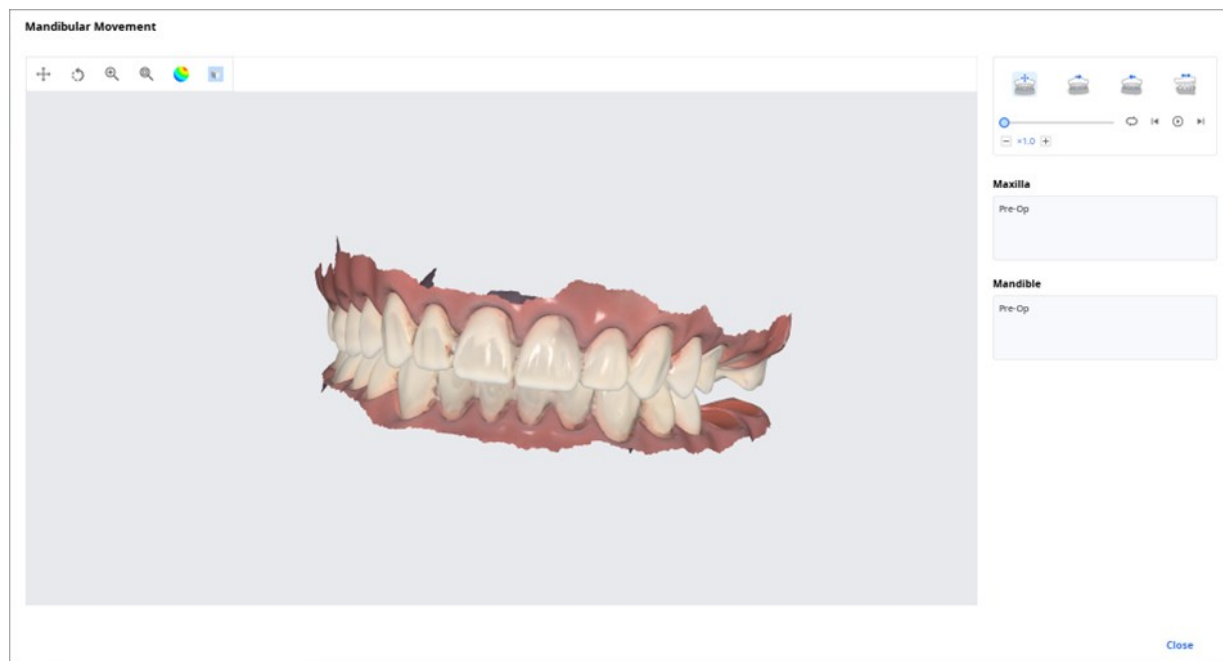

	Fri rörelse	Spela upp underkäkesrörelse.
	Vänster sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt vänster.
	Höger sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt höger.
	Utskjutande rörelse	Spela upp underkäkesrörelse framåt.

Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning

Med Medit Scan Application kan du få flera ocklusionsdataresultat.

Medit Link tillhandahåller en funktion för att hantera resultaten via "Filvisning".

Så hanterar du flera resultat


Om du får flera ocklusionsresultat med Medit Scan for Clinics kan du välja ett enda resultat i Medit Link.

Resultatlistan sorteras enligt namn där du kan välja ut ett objekt.

Den valda modellen visas i "Dataträd" och "Modellvisningsområde".



Du kan komprimera listan och ändra objektet med pilikonerna.

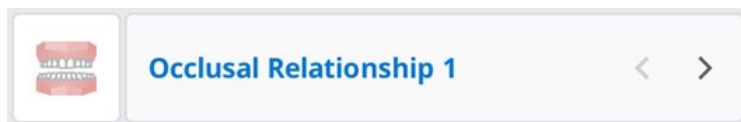

Visa alternativ

Du kan göra ändringar i Visa alternativ för att anpassa falllistans layout i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilter

Visa eller dölj filter som representerar fallets status. Dolda statusfilter visas inte på skärmen i Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Med hjälp statusfilter kan du enkelt hitta det fall du behöver.

- Klicka på statusen du vill se för att endast visa fall med denna status.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

För varje box finns följande filtreringsalternativ:

Box	Statusfilter
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabellobjekt

Välj de objekt som ska visas i fallistan i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. För att optimera användarmiljön kan du ändra ordningen på tabellobjekten och justera tabellkolumnbredden i listvisningen.

För varje box finns följande tabellalternativ:

Box	Tabellobjekt
Patient	Patientnamn/Patient-ID/Kön/Anfal fall/Registreringsdatum/Födelsedatum
Case Box	Status/Fallets namn/Födelsedatum/Forminformation/Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Labbnamn
Order Box	Status/Fallets namn/Patientnamn/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Labbnamn/Begärt leveransdatum/Ändrat datum
In Box	Status/Fallets namn/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum/Ändrat datum/Kliniknamn

Work Box	Status/Fallets namn/Patientnamn/Forminformation/Ändrat datum/Begärt leveransdatum/Skanningsdatum/Kliniknamn/Beställningsdatum
----------	---

Visningstyp

Välj Gallerivisning eller Listvisning som visningstyp i Case Box.

För varje box finns följande visningsalternativ:

Box	Visningalternativ
Patient	Listvisning
Case Box	Listvisning/Gallerivisning
Order Box	Listvisning
In Box	Listvisning
Work Box	Listvisning

Gruppering

Välj ett grupperingsalternativ för att klassificera och ordna om fall i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande grupperingsalternativ:

Box	Grupperingsalternativ
Case Box	Inga/Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum
Order Box	Inga/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum
In Box	Inga/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum
Work Box	Inga/Begärt leveransdatum



Grupperingsalternativen är inte tillgängliga i Patient, Case Talk och Trash Box.

Sortering

Välj ett sorteringsalternativ för att ändra ordningen på fallen i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande sorteringsalternativ:

Box	Gruppering	Sorteringsalternativ
Patient	-	Patientnamn/Patient-ID/Födelsedatum/Registreringsdatum/Antal fall
Case Box	Inget	Patientnamn/Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Patientens namn	Ändrat datum/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Skanningsdatum	Patientens namn/Senast ändrat datum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Ändrat datum/Skanningsdatum/Labbnamn
Order Box	Inget	Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Skanningsdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn

	Begärt leveransdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
In Box	Inget	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Beställningsdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Kliniknamn
Work Box	Inget	Patientens namn/Senast ändrat datum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Senast ändrat datum/Kliniknamn

 Obs

Sorteringsalternativen är inte tillgängliga i Case Talk och Trash Box.

Filtrering och sök

Filtrering enligt patient

Filtrera och visa fall enligt patientnamn. Du kan skapa en lista genom att filtrera fram endast de patienter du ska arbeta med.

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a 'Dashboard' icon. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (with a checkmark), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Ange patientens namn.

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' filter. The search bar contains the text 'won'. Below the search bar is a list of five patient entries, each with an unchecked checkbox:

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Välj patienter bland sökresultaten nedan.

This screenshot shows the dropdown menu with the search bar containing 'won'. It displays a list of five patient entries, each with an unchecked checkbox:

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Below the list, there is a section titled 'Selected Patients' with a 'Clear Selection' link. Under this link, three patients are listed with checked checkboxes:

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. endast fall för valda patienter visas i listan.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - +2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01~2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
☐ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
☐ Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
☐ Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
☐ Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
☐ Form Only	wonhoonchoi	testsamplercase	-	2023-02-10 오후 7:39			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
☒ Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
☒ Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
☒ Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrering enligt datum

Filtrera och visa fall senast ändrade inom den angivna perioden.

1. Klicka på filtret för tidslängd.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Välj tidslängd i listan.

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som senast ändrats inom perioden.
- Idag: Visa de fall som ändrats senast idag.
- Igår: Visa de fall som ändrats senast igår.
- Senaste 7 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna exklusive idag.
- Denna månad: Visa de fall som senast ändrats under den här månaden.
- Föregående månad: Visa de fall som senast ändrats under förra månaden.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Avancerade sökfunktioner

Använd sökfunktionerna för att snabbt hitta den information du vill ha.

All  Search / Contains 

Följande sökkriterier är tillgängliga för varje ruta:

Patient	Allt, patientnamn, patient-ID
Case Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Forminformation, Labbnamn
Order Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Labbnamn, Beställnings-ID
In Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Beställnings-ID
Work Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Forminformation, Kliniknamn, Beställnings-ID
Case Talk	Case Talk-namn (Innehåller), Patientens namn (Lika med)
Trash Box (Klinik)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Labbnamn, Raderad av

Trash Box (Labb)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Raderad av
---------------------	---

Du kan välja Sökkriterium och välja något av alternativen Innehåll och Lika med.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall

Skapa fall

Skapa fall i Case Box (klinik)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

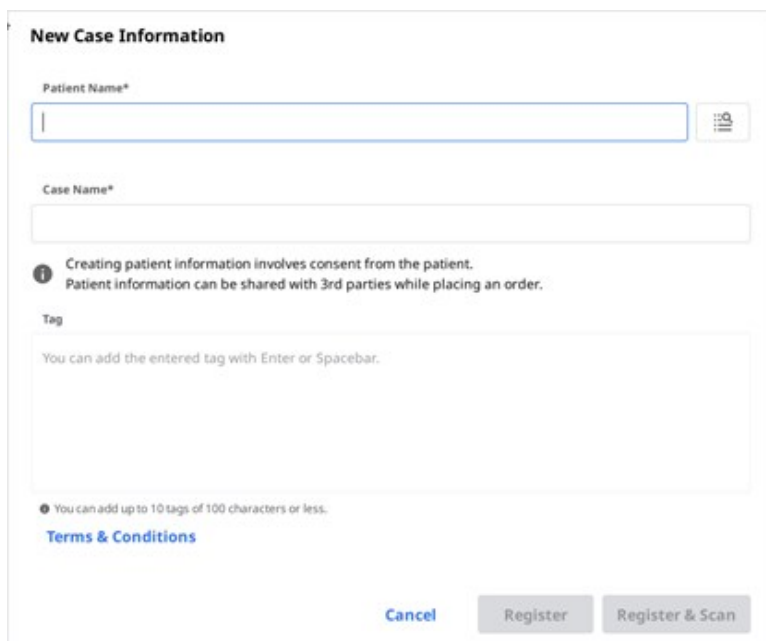

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Ange grundläggande information, såsom patientens namn och fallets namn.
 - Om du anger ett namn som inte finns på patientlistan kommer en ny patient att läggas till.
 - Om du anger ett namn som finns i patientlistan kan du välja det från listan.
 - Om du registrerar ett fall för en befintlig patient, klicka på ikonen Patientlista för att välja en befintlig patient.



- I dialogrutan Patientlista kan du registrera en ny patient eller redigera informationen för en befintlig patient.

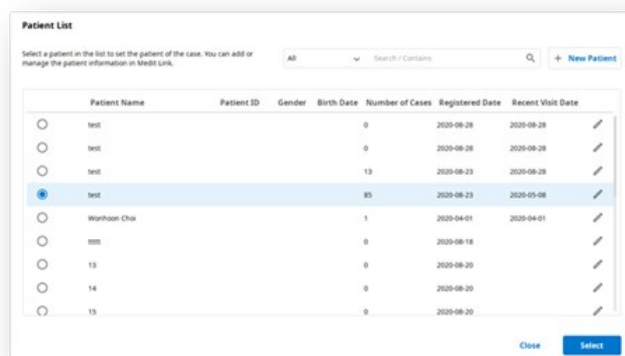

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Model Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worham Chai				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Klicka på "Registrera & Skanna" för att slutföra fallregistreringen och börja sedan skanna.
 - RegistreraDu omdirigeras till huvudsidan. Detta är användbart när du registrerar flera fall.
 - Registrera & Skanna: Gå till fliken Form för att registrera forminformation för fallet.

Skapa fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

The form is titled "New Case Information" and contains the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons**: "Cancel" and "Register".

2. Ange eller välj kliniknamn.
3. Ange patientens namn och fallets namn. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Ange förväntat leveransdatum med avseende på slutdatumet för arbetet.
5. När du har registrerat fallet kommer du att omdirigeras till huvudsidan.

Redigera fall

Skapa fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

The form is titled "Edit Case Information" and contains the following fields and controls:

- Patient Name***: A text input field containing "Test Occlusion" with a search icon (magnifying glass) to its right.
- Case Name***: A text input field containing "mandibular movement - Clone - Clone".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons**: "Cancel" and "Apply".
- Additional Info**: A green checkmark icon and text: "Test Occlusion 00010101" is selected." and an information icon with text: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Link**: "Terms & Conditions".

2. Klicka på ikonen "Sök" för att ändra patientens namn. Observera att det inte går att redigera direkt; leta istället upp ett patientnamn som du vill ersätta det nuvarande med och redigera

sedan patientinformationen från listan.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Leta upp namnet på en patient som du vill ersätta med den nuvarande.
4. För att skapa en ny patient, klicka på knappen "Ny patient".
5. Använd knappen "Redigera" för att ändra den registrerade informationen om patienten.
6. Klicka på "Tillämpa" för att slutföra processen.

Redigera fall i Work Box (Lab)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Clinic Name*

test 

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

 2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Klicka på "Tillämpa" när du redigerat klart.



Du kan inte redigera information på fall som tagits emot genom beställning i In Box.

Klona fall

Klona fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Du kommer att tillfrågas vilken typ av information du vill klonas till det nya fallet.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Välj om du vill replikera endast forminformation eller alla data.
4. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".

Klona fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Duplicera alla data för att skapa ett nytt fall.
3. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".

Radera fall

Radera fall (Klinik och Labb)

1. Klicka på ikonen "Radera".



2. Klicka på ikonen "OK" för att radera fallet.

Warning
 Do you want to delete the case?

Cancel OK

3. Raderade fall flyttas till Trash Box och kan återställas vid behov.

Forminformation

Du kan ange formulärinformationen baserat på det anslutna programmet och behandlingstypen.

Informationen du anger kommer att användas som grundläggande information för skanning, CAD och beställning.

Registrering av forminformation i Case Box

Gå in på fliken Form

1. Välj om du ska mata in behandlingsinformation för tänder eller käke.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
3. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Gå in på fliken CAD

1. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
2. Välj tandnummer/käke/nummer på gjutform.
3. Ange inställningarna för detaljerade alternativ och CAD-operationer.
4. Klicka på "OK" för att spara inställningarna.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
5. Klicka på "Spara" för att spara din registrering

Registrering av forminformation i Work Box

Gå in på fliken Form

1. Välj det skanningsprogram du vill använda.
2. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
3. Metoderna kan skilja sig åt beroende på valt skanningsprogram.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tänder	O	O
Käke	O	O
Flexibel multi-die	X	O
Multi-Die	X	O


4. Välj tandnummer, käknummer eller nummer på gjutform för skanningsprocessen.
5. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
6. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Gå in på fliken CAD

1. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
2. Välj tandnummer/käke/nummer på gjutform.
3. Ange inställningarna för detaljerade alternativ och CAD-operationer.
4. Klicka på "OK" för att spara inställningarna.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
5. Klicka på "Spara".

Lägg till tänder till en brygga

Du kan lägga till flera tänder till en brygga när samma material appliceras på flera närliggande tänder. Klicka på bryggikonen bredvid de valda tänderna för att lägga till eller ta bort dem.

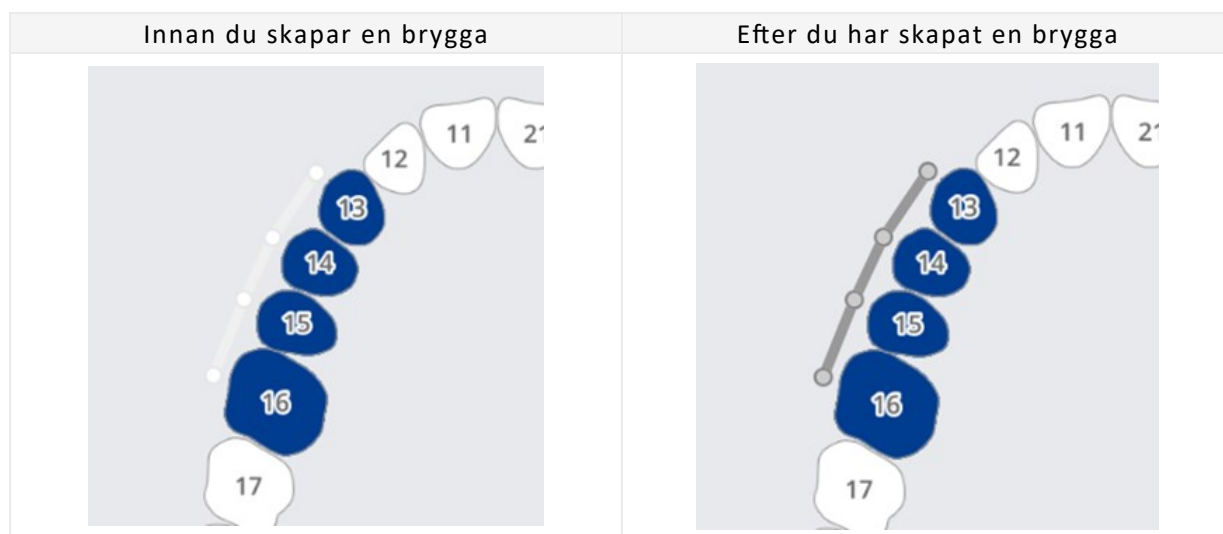

Inställning av skanningsalternativ

Det finns olika skanningsalternativ beroende på vilket program du arbetar med.

De valda skanningsalternativen skickas till varje skanningsprogram.

Medit Scan for Labs

Allmänna alternativ

	Närliggande tänder	Markera preparerade och närliggande tänder och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Antagonist	Markera antagonisten automatiskt och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Artikulator	Visningsalternativ för att välja artikulator i skanningsprogrammet.
	Röreslemarkör	Med denna kan du använda skanningsstrategin "Käkrörelse" i skanningsprogrammet.

Alternativ enligt tänder

	Skanningskropp	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av skanningskroppar i skanningsprogrammet.
	Pre-op-skanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av Pre-Op-modell i skanningsprogrammet.

	Vaxkopieskanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av vaxkopior i skanningsprogrammet.
---	------------------	---

Lägg till i Favoriter

Lägg till produkter som favoriter för att snabbt kunna välja dem senare.

Listan med favoriter kan hanteras som en mall och delas via export- och importfunktionerna.

Lägg till i Favoriter

1. Välj tandnummer.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Typ – Metod – Material – Nyans kan registreras som favorit även om inte alla är markerade.
3. Klicka på ikonen "Stjärna".

4. En kombination av de valda parametrarna, exklusive tandnummer, läggs till i din favoritlista.

Hantera favoritmallar

Du kan registrera, hantera och dela olika typer av mallar.

Lägg till	Lägg till en ny mall.
Döp om	Döp om den nuvarande mallen.
Radera	Radera den nuvarande mallen.
Exportera	Exportera den nuvarande mallen till en fil.
Importera	Importera en filmall.

Jobba med skanning/CAD

Skanningsprocess

Baserat på inmatad information kan du påbörja skanning.

1. Ange/spara behandlingsinformation och välj nödvändiga skanningsalternativ.
2. Klicka på knappen "Skanna" i fönstrets övre högra hörn.

CAD-process

Medit Link är integrerat med exocad.

CAD	Registrera behandlingsinformation	Bekräftelse av behandlingsinformation	Direkt CAD- utförande	Importera CAD- resultat tillbaka till Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. I Inställningar > Ställ in anslutet program kan du länka det valda CAD-programmet från listan.
2. Ange/spara uppgiftsinformation och designalternativ på CAD-fliken.
3. Klicka på "CAD" i fönstrets övre högra hörn.
4. Det länkade CAD-programmet körs och data skickas automatiskt.
5. Spara resultaten när du har utfört CAD.



Medit Link för macOS stöder inte funktionen att länka till CAD.

Hämta resultatfiler

Exportera skanningsresultatfiler

Förutom att dela resultat med partners genom beställningar, kan du med Medit Link också lagra dina resultatfiler i önskat filformat med hjälp av exportfunktionen.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close Export

Exportera filer till	Ange sökvägen till platsen där du vill lagra resultaten.
Mappnamn	Systemet skapar en ny mapp och lagrar alla resultatfiler i den. Standardnamnet på mappen bestäms av namnregeln. Du kan också ändra mappnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för mappnamn.
Filnamn	Ställ in filnamnet för resultatet. Namnregeln anger standardnamnet på filen. Du kan också ändra filnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för filnamn
CAD-typ	Välj det CAD-program som ska användas för ditt designprogram. Medit Link kommer att justera filerna baserat på detta val så att du kan börja designa utan behov av ytterligare axeljustering.
Meshformat	Ange formatet för mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera filer	Komprimera alla resultat till en enda fil.
Kombinera individuell mesh	Kombinera resultatet av överkäke eller underkäke med en individuell tand. Rekommenderas när det inte går att importera flera filer till ett program.


Exportera alla ocklusiva förhållanden	När skanningsappen skapar flera ocklusionsresultat kan du exportera alla ocklusionsresultat på en gång.
Spara fallinformation som PDF	Spara fallinformationen som en pdf med resultatet.

Exportera resultatfiler från fallista


Du kan exportera resultatfiler för ett fall eller för flera fall samtidigt med alternativet "Exportera" ovanför fallistan i Case Box och In Box.

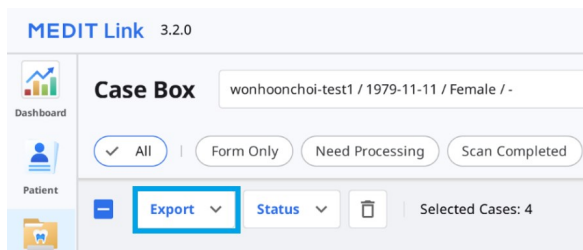

1. Gå till In Box eller Work Box.
2. Markera alla fall i listan som du vill exportera resultatfiler från.

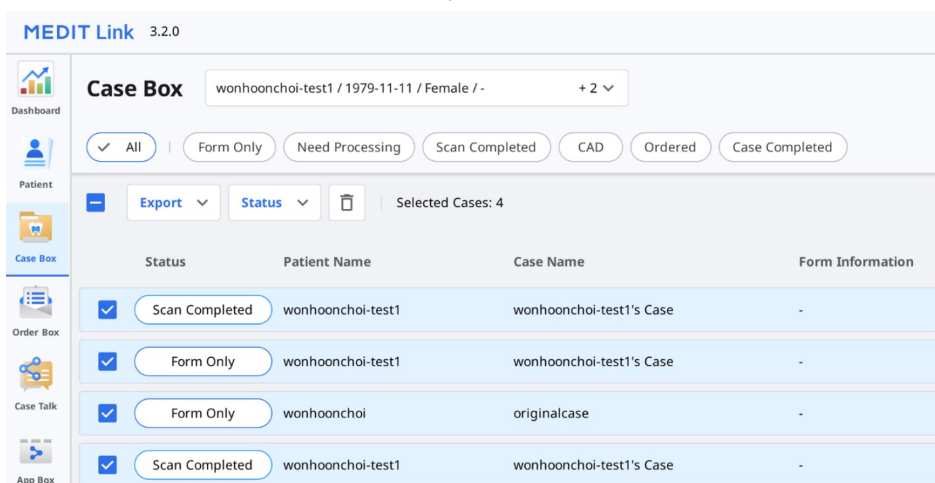

3. Klicka på "Exportera" och välj "Resultatfiler".

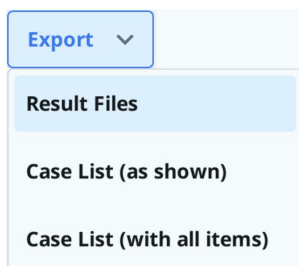

4. Ange målmapp, filtyp, nätformat och bildformat och välj exportalternativ på fliken "Alternativ".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

Obs

Fälten "Mappnamn" och "Filnamn" kan inte redigeras vid export av filer för flera fall. Mappnamnet och filnamnet skapas automatiskt enligt reglerna du anger i alternativen för "Regel för mappnamn" och "Regler för filnamn" i Inställningar > Exporteringsalternativ.

5. Klicka på "Exportera".
6. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportera resultatfiler från Filvisning

Du kan exportera skanningsresultatfiler för ett fall med ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.

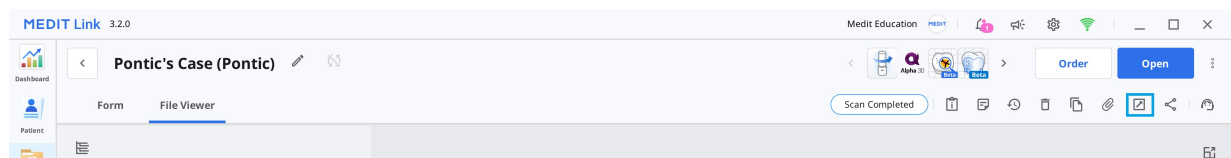

1. Gå till In Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.



4. Ange målmap, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. På fliken "Fillista" kan du välja de filer som krävs för fallet genom att avmarkera onödiga filer.

Export Files in This Case

Options File List

☒

☒ Maxilla
☒ Base

☒ Mandible
☒ Base

☒ Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒ Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible

☒ Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export

6. Klicka på "Exportera".
7. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.


Question

Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportera resultatfiler från dataträd


Du kan exportera en eller flera filer i en specifik datagrupp i den expanderade menyn i filvisaren.

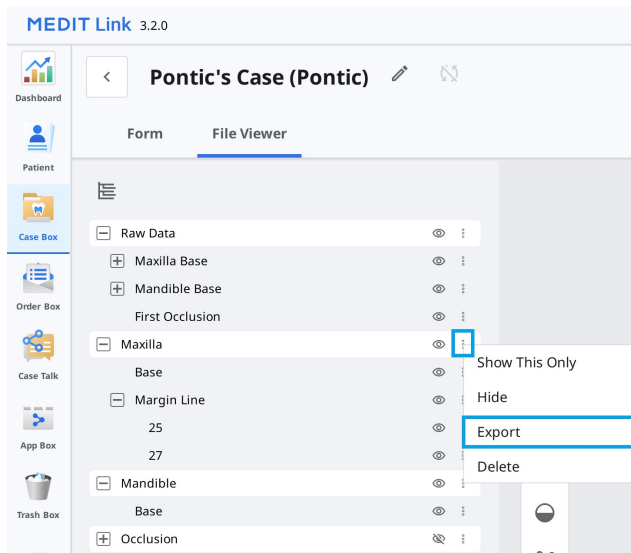

1. Gå till In Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen med tre punkter bredvid datagruppen eller en enhet i dataträdet på fliken Filvisning.

...

4. Klicka sedan på "Exportera".

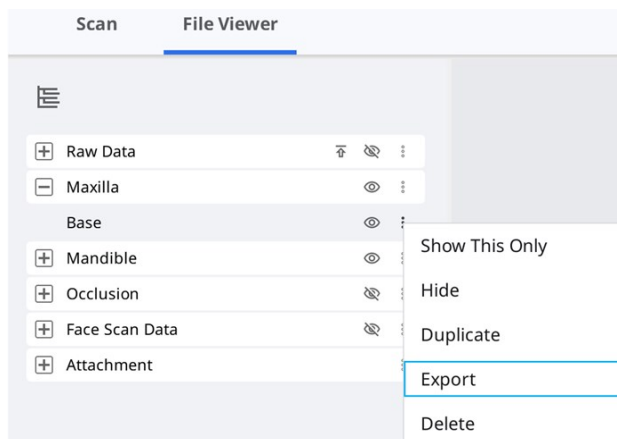

5. Ange målmap, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Du kan se att endast de filer du valt i dataträdet är markerade i fillistan.

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Klicka på "Exportera".
8. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Exportera fallista som CSV


I Medit Link finns en funktion för att exportera fallistan i CSV-format.

Du kan exportera fallistan med grundläggande information för enkel hantering av fall.

1. Gå till In Box eller Work Box.
2. Välj de fall som du vill exportera.

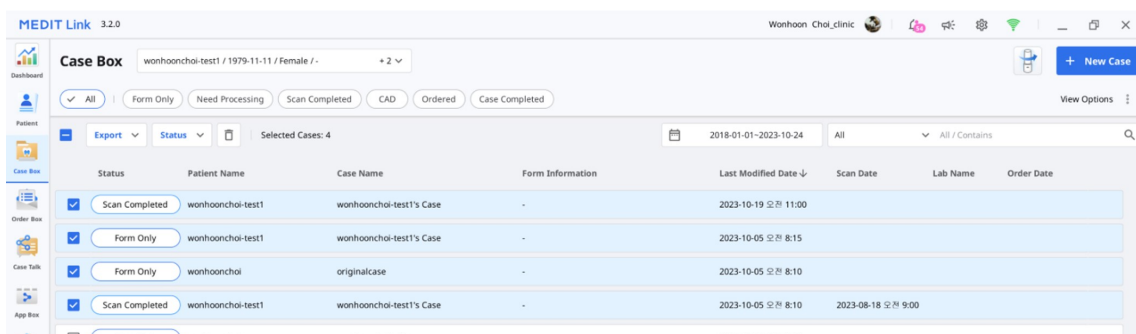

3. Klicka på "Exportera" och välj "Fallista (enligt bild)" eller "Fallista (med alla objekt)".

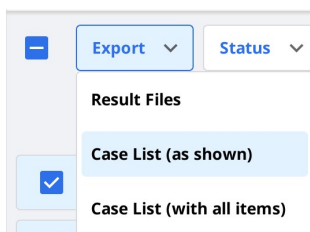

Obs

Fallista (enligt bild): Exportera fallistan med de objekt som visas på skärmen. Gå till Visa alternativ > Tabellobjekt för att visa eller dölja objekten som du vill.

Fallista (med alla objekt): Exportera fallistan med alla objekt, inklusive status, fallnamn, födelsedatum, forminformation, ändringsdatum, skanningsdatum, beställningsdatum och labbnamn.

4. Skapa en sökväg och ett filnamn och spara sedan listan.
5. Fallistan sparas som en CSV-fil.

Exportera marginallinjen


I Medit Scan for Clinics finns en funktion för att skapa marginallinje. Medit Link kan överföra denna marginallinje till CAD-programmet.

Exportera marginallinjen i färg

I allmänhet konverterar Medit Link marginallinjen i färg och exporterar resultatet tillsammans med överkäke eller underkäke. Du kan använda färginformationen för att skapa marginallinjen i CAD.

Exempel:

Överkäke

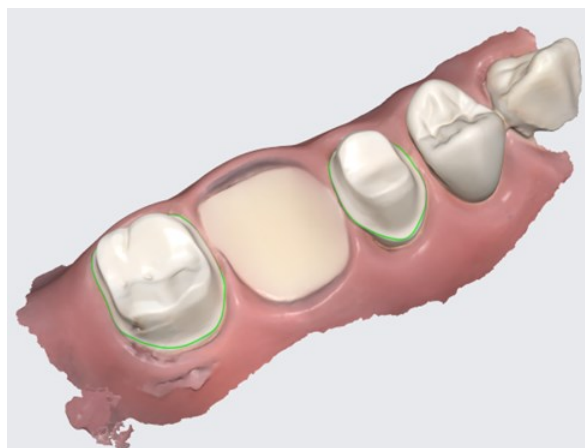

Resultat med marginallinjerna som färginformation



Denna funktion är tillgänglig för format som innehåller färginformation, som exempelvis meditMesh, OBJ och PLY. Marginallinjen konverteras inte till STL.




CAD-typ > 3shape stöder inte den här funktionen.

Exportera marginallinjen i färg

För exocad kan Medit Link exportera marginallinjen i formatet "~margin.xyz" så att den kan importeras direkt i exocad.

Du kan använda den här filen i exocad utan justeringar.

Exempel:

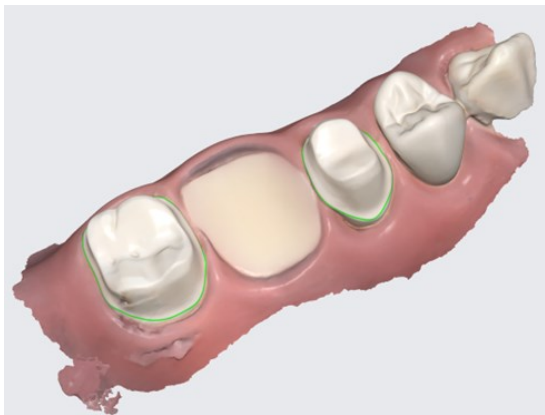Överkäke	Marginallinje
 Resultat med marginallinjerna som färginformation	 Marginallinjer exporterade som enskilda filer

Ladda ner filer från Medit Links webbsida

I Medit Link finns en nedladdningsfunktion.

Om du vill hämta resultatfilerna utan att installera Medit Link-applikationen kan du ladda ner filerna från Medit Links webbsida.




Data måste vara uppladdade i Medit Cloud för att filerna ska kunna laddas ned från webbsidan.

Nedladdningsfunktionen finns i följande meny på Medit Links webbsida.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Du hittar knappen "Ladda ner" längst upp till höger.

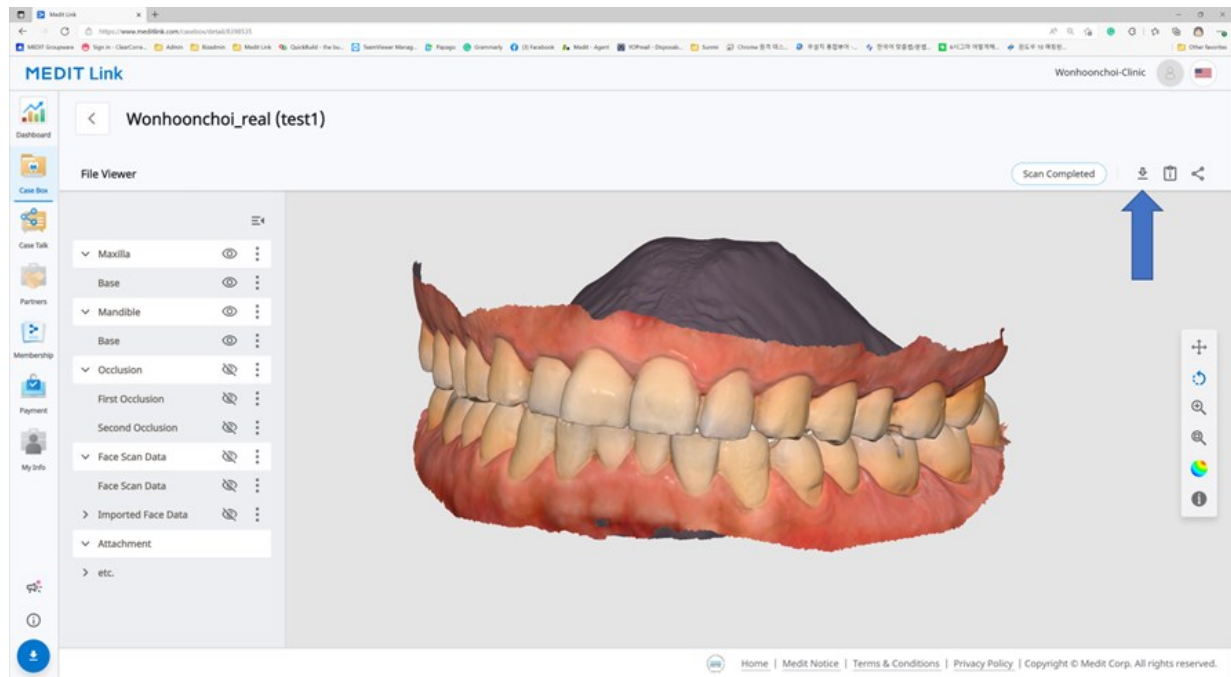

Web Viewer

När du delar ett fall via Case Talk kan du ställa in om du vill tillåta nedladdning eller inte.

Om du markerar "Ge nedladdningstillstånd" och delar ett fall kan alla användare som ansluter till den delade länken ladda ner filerna.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

I Web Viewer hittar du ikonen "Ladda ner" uppe till höger.

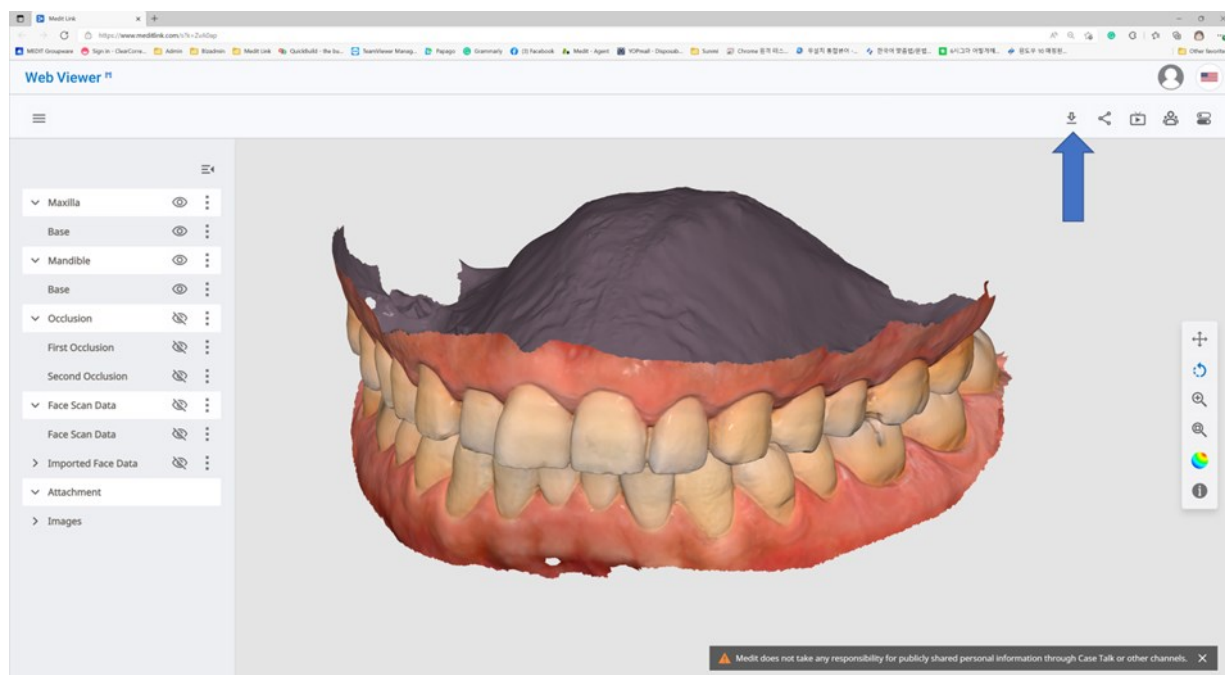

1. Klicka på "Ladda ner".



2. Välj meshformat i nedladdningsdialogrutan.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Klicka sedan på "OK".

Beställ/Hantera fall

Du kan enkelt beställa ett fall med data inhämtade från anslutna program och bifogade av användaren.

Beställa fall

Du kan lägga en beställning till dina partners i Case Box.

1. Klicka på knappen "Beställ".
2. Kontrollera vilken information som krävs för din beställning.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Välj partner.
4. Kontrollera produktinformationen på fliken Beställningslista.
 - Bestäm om du vill dela patientens namn.
5. Kontrollera vilka filer du ska beställa på fliken Fillista.
6. Ange önskat leveransdatum.
 - Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
7. Du kan lägga till ett memo och taggar till din partner för att beskriva specifika detaljer.
8. När flera ocklusionsresultat genereras från skanningsappen kan du skicka alla ocklusionsresultat på en gång genom att markera "Ordna alla ocklusiva förhållanden".
9. Lagg din beställning.

Bekräfta beställning (In Box)

- Acceptera beställning vid emottagande.
- Accepterade beställningar vidarebefordras till Work Box.


< test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order Pending


Avbryt beställning (Order Box)

- Du kan avbryta en beställning innan din partner accepterar den.
- Det går att göra en ombeställning på avbrutna fall.

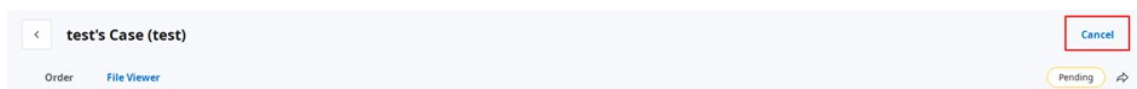


Avvisa beställning (In Box)

- Du kan avvisa en mottagen beställning.
- Det går att göra en ombeställning på avvisade fall.

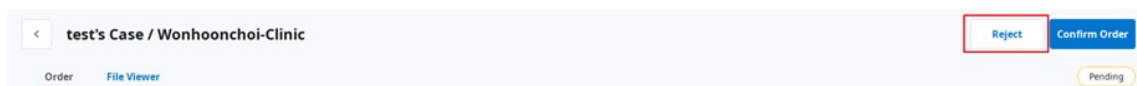

Kontrollera beställda fall

Du kan kontrollera detaljerna för fall som du beställt i Order Box på klinikkontot. Du kan också kontrollera fall som du tagit emot i In Box på labbkontot.

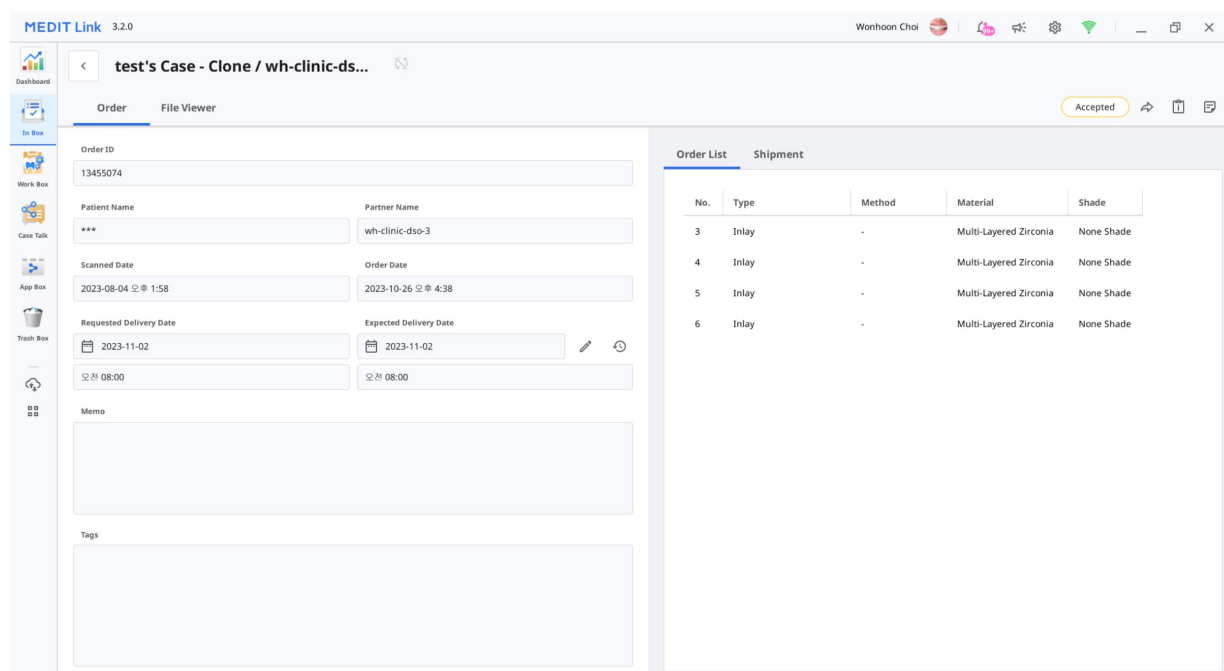

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Beställningsinformation	De uppgifter som kan ingå i beställningen är följande: Beställnings-ID/patientens namn/namn på konto/skanningsdatum/beställningsdatum/leveransens förfallodatum/memo. Du kan kontrollera detaljerna för den beställda produkten och leveransinformation.
Beställningslista	Beställningslistan visar detaljerna för den beställda produkten.
Frakt	Ange/kontrollera fraktinformationen.

Ange fraktinformation (In Box)

Ange fraktoppgifter för det slutförda fallet och påbörja frakt.

1. Klicka på fliken "Frakt".
2. Ange fraktoppgifter och klicka på "Registrera".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. Den angivna informationen skickas till din partner.

Hantera leveransdatum

Du kan ställa in önskat leveransdatum när du gör en beställning. Denna information kommer att vidarebefordras till din partner.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Vid beställning i Case Box kan du ange önskat leveransdatum.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name Patient Name

☒ Share patient information

Requested Delivery Date Delivery Time AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
- Ange datum/tid för då du vill ta emot produkterna och skapa beställningen.
- Du kan enkelt ställa in tiden med skjutreglaget.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Ange önskat leveransdatum för fall du beställer i In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 09:56 Order Date: 2022-09-29 08:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01

Memo: <Scanbody Library> 16: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 15: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10 14: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Verifiera det begärda leveransdatumet med partnern, du kan boka om med knappen "Redigera".



2. Ange förväntat leveransdatum med hänsyn till faktiska arbetsdagar. Vid behov kan du också lämna en kommentar.
3. Klicka på "Tillämpa".

March 2022

5 M T W T F S

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Önskat leveransdatum och memo skickas tillsammans med beställningen.
 - Du kan kontrollera datum och anteckningar i Order Box.
 - Du kan ändra det förväntade leveransdatumet. Ändringarna kommer att vidarebefordras till din partner.
5. Du kan kontrollera fallhistoriken med knappen "Historik".



Slutföra fall

Slutfört (Work Box/In Box)


När alla uppgifter är klara, klicka på "Klar" för att slutföra fallet.

Slutför ett fall i falldetaljer

Du hittar ikonen med tre prickar till höger om knappen "Öppna" eller "Skanna om".




Slutför arbetet genom att klicka på ikonen och välja "Done".

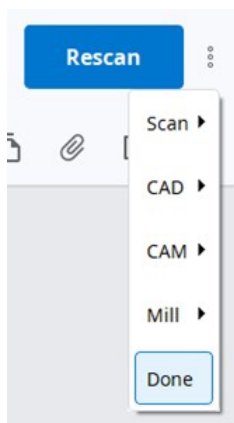

Slutför flera fall i fallistan

1. Gå till Work Box.
2. Välj alla fall som du vill slutföra.

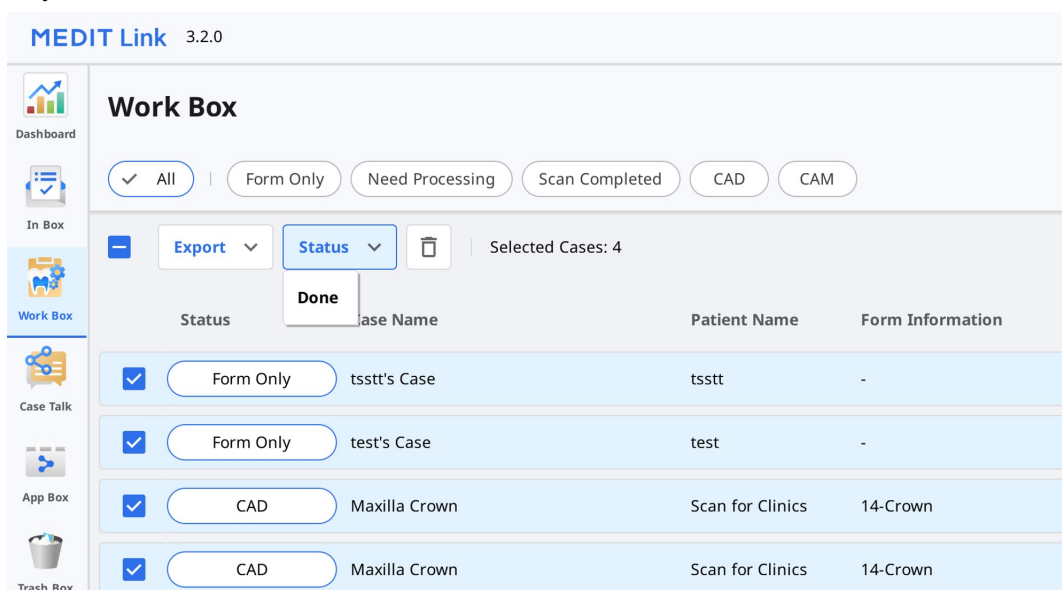


3. Klicka på "Status" och välj "Done".

Slutfört (Case Box/Order Box)

När fallet är avslutat hos labbet måste kliniken bekräfta fallet för att slutföra hela beställningsprocessen.

Kliniken hittar knappen "Bekräfta leverans" i Order Box när labbet slutfört sitt arbete.


Klicka på denna för att slutföra hela beställningsprocessen och så att fallstatusen ändras till "Case Completed".

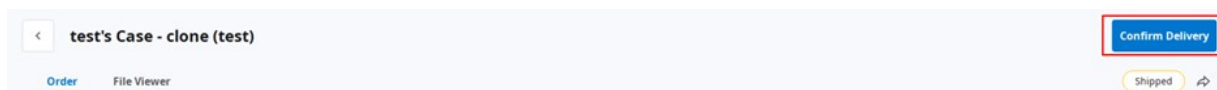

Slutför att fall som inte beställts i Case Box

Fall som inte beställts av labbet kan du slutföra i Case Box.

1. Gå till Case Box.
2. Välj fall som ska slutföras.

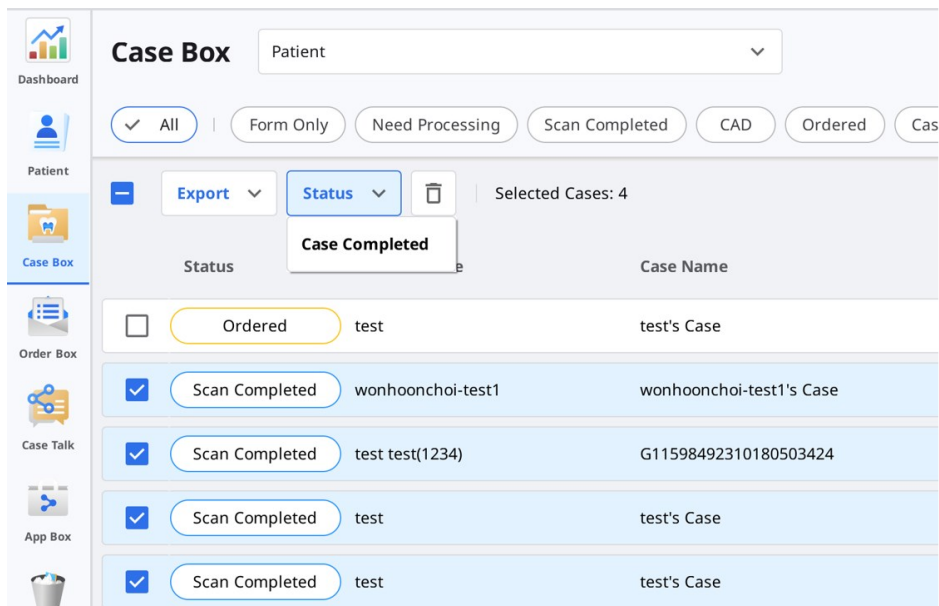

The screenshot shows the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box (highlighted), Order Box, Case Talk, and App Box. The main area has a title 'Case Box' and a 'Patient' dropdown menu. Below this are filter buttons: 'All' (checked), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Cas'. There are also 'Export' and 'Status' dropdown menus, and a 'Selected Cases: 4' indicator. A table lists cases with columns for 'Status', a checkbox, and 'Case Name'. The 'Status' dropdown menu is open, showing 'Case Completed' as the selected option.

Status	Case Name
☐ Ordered	test
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1
☒ Scan Completed	test test(1234)
☒ Scan Completed	test
☒ Scan Completed	test


3. Klicka på "Status" och välj "Case Completed".

Kommunicera med hjälp av taggar

Du kan lägga till ytterligare information för ditt fall med hjälp av taggar och skicka dem till dina partners.

Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall

Du kan ange taggar när du skapar ett nytt fall eller redigerar fallinformation.

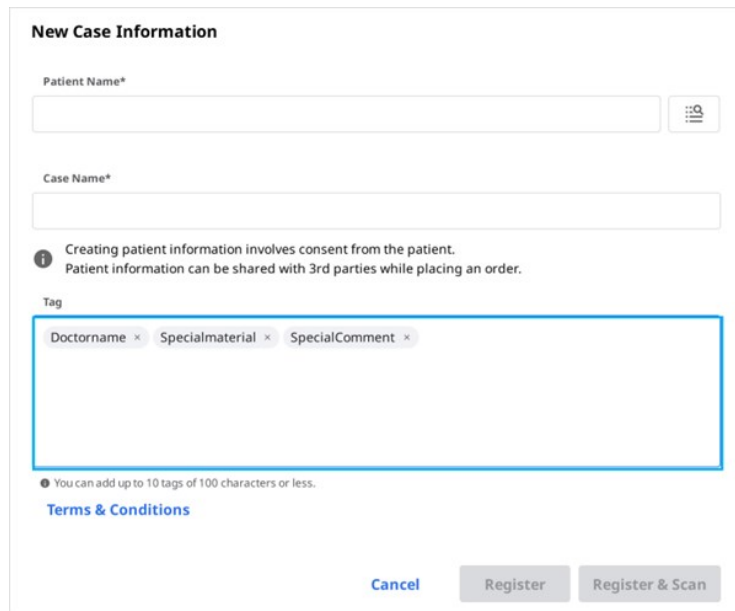

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Du kan enkelt söka och välja taggar som du har använt tidigare.

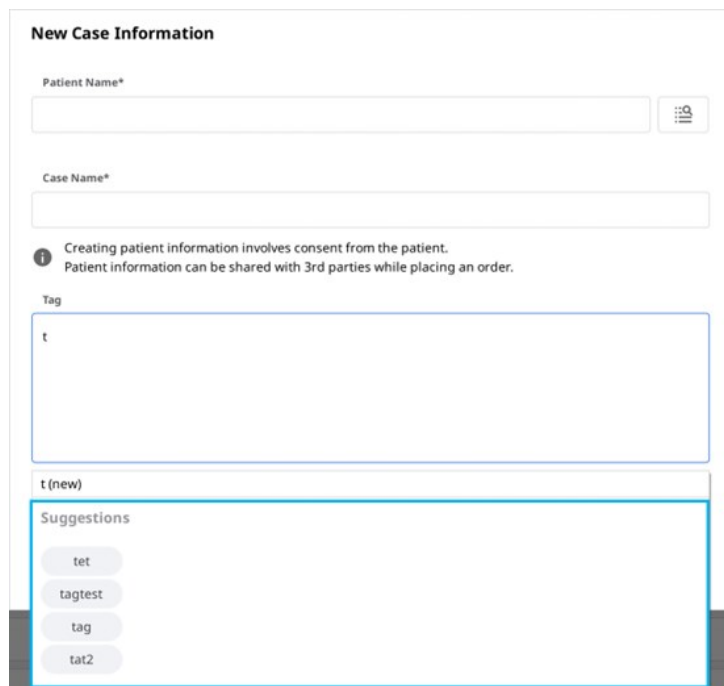

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet
tagtest
tag
tat2

Lägg till taggar vid beställning

Du kan kontrollera och redigera taggar i dialogrutan Beställning när du lägger en beställning.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 오후 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Kontrollera taggar på Falldetaljer

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...

Form File Viewer

Raw Data Maxilla Base Mandible

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

