

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

Εισαγωγή	6
Medit Link	6
Επισκόπηση υπηρεσίας	6
Υπηρεσία Cloud	7
Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών	7

Medit Link > Εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος	8
Απαιτήσεις συστήματος για Windows	8
Απαιτήσεις συστήματος για macOS	8
Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή	8
Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης	8
Ελάχιστο για κινητά	8
Εγκατάσταση σε Windows	9
Εγκατάσταση σε macOS	12

Medit Link > Έναρξη

Εγγραφείτε και συνδεθείτε	16
Ιστοσελίδα Medit Link	16
Εγγραφή	16
Σύνδεση και Αρχική σελίδα	18



Medit Link > Ιστοσελίδα Medit Link

Dashboard	21
Επισκόπηση Dashboard	21
Medit Insights	21
Εγγραφή στο Medit Insights	22
Απεγγραφή από το Medit Insights	23
Patient	24
Αναζήτηση ασθενούς	24
Case Box/Work Box	25
Φιλτράρισμα περιστατικού	25
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	25
Φιλτράρισμα κατά κατάσταση	26
Φιλτράρισμα κατά διάρκεια	27
Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση	27
Λεπτομέρειες περιστατικού	28
Order Box/In Box	29
Λεπτομέρειες παραγγελίας	29
Καρτέλες σε Order Box/In Box	29
Case Talk	30
Δημιουργία Case Talk	30
Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης	31
Λεπτομέρειες Case Talk	32
Web Viewer	33
Σχολιασμός	34
Σχόλια	35
Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο	36
Δέντρο δεδομένων	36

Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων	
3D έλεγχοι μοντέλου	37
Partners	38
Αναζήτηση συνεργατών	38
Η Λίστα συνεργατών μου	38
Πρόσκληση συνεργάτη	39
Membership	40
Συνδρομή	40
Το Πρόγραμμα μου	41
Αποθήκευση Cloud	41
Εγγραφή	42
Απεγγραφή	44
Πληροφορίες χρέωσης	45
Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής	45
Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής	47
Εξαργύρωση	48
Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης	48
Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης	49
My Info	50
Ο λογαριασμός μου	50
Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)	50
Ο σαρωτής μου	51
Άνοιγμα του μενού	52
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	52
Πληροφορίες Medit	52
Λήψη εφαρμογής Medit Link	52

Medit Link > Εφαρμογή Medit Link

Επισκόπηση	54
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου	54
Γραμμή τίτλου	55
Οι Πληροφορίες μου	55
Ειδοποιήσεις	55
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	56
Ρυθμίσεις	56
Κατάσταση δικτύου	57
Ρυθμίσεις	59
Γενικά	59
Διαχείριση αποθήκευσης	60
Ορισμός περιόδου	60
Τοπικός αποθηκευτικός χώρος	60
Αποθήκευση Cloud	61
Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος	61
Επιλογές εξαγωγής	62
Εργαλείο μετατροπής περιστατικών	63
Εξαγωγή περιστατικού	64
Εισαγωγή περιστατικού	65
Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης	66
Σχετικά	67
Οδηγός χρήστη	67
Μενού	68
Dashborad	68
Patient	68
Προσθήκη νέου ασθενή	69
Διαγραφή ασθενή	69
	70

Συγχώνευση ασθενών	
Case Box/Work Box	70
Καρτέλες σε Case Box/Work Box	71
Λειτουργίες σε Case Box/Work Box	71
Order Box/In Box	73
Καρτέλες σε Order Box/In Box	73
Case Talk	73
App Box	74
Trash Box	75
Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών	75
Μεταφόρτωση	76
Λήψη	76
Πληροφορίες Medit	77
Πρόγραμμα προβολής αρχείων	78
Δέντρο δεδομένων	78
Εργαλεία ελέγχου μοντέλου	78
3D έλεγχος μοντέλου	79
Έλεγχος 2D εικόνας	79
Εργαλεία λειτουργίας	80
Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις	80
Ορθοδοντική προβολή	80
Γέμισμα κενών	81
Περικοπή	82
Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης	84
Κίνηση της κάτω γνάθου	86
Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων	87
Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα	87
Επιλογές προβολής	88
Φίλτρα κατάστασης	88
Τύπος προβολής	89
Ομαδοποίηση	89
Ταξινόμηση	89
Φιλτράρισμα και αναζήτηση	91
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	91
Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία	92
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης	92

Medit Link > Ροή εργασιών

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού	94
Δημιουργία περιστατικών	94
Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	94
Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	95
Επεξεργασία περιστατικών	95
Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	95
Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	96
Κλωνοποίηση περιστατικών	97
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	97
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	97
Διαγραφή περιστατικού	98
Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)	98
Πληροφορίες φόρμας	99
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box	99
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	99
Εισαγωγή στην καρτέλα CAD	99
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box	99

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	
Εισαγωγή στην καρτέλα CAD	100
Σύνδεση δοντιών με γέφυρα	100
Ρύθμιση επιλογών σάρωσης	100
Medit Scan for Labs	100
Γενικές επιλογές	100
Επιλογές κατά δόντια	101
Προσθήκη στα αγαπημένα	101
Προσθήκη στα αγαπημένα	101
Διαχείριση αγαπημένων προτύπων	101
Εργασία σε Σάρωση/CAD	102
Διαδικασία σάρωσης	102
Διαδικασία CAD	102
Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων	103
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης	103
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών	104
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων	105
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων	107
Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV	109
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου	110
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα	110
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο	111
Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link	111
Case Box/Work Box	111
Web Viewer	112
Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών	114
Παραγγελία περιστατικών	114
Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)	114
Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)	115
Απορριπτές παραγγελίες (In Box)	115
Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών	115
Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)	116
Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης	116
Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)	116
Ολοκλήρωση περιστατικού	118
Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)	118
Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών	118
Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών	118
Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)	119
Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box	119
Επικοινωνία με χρήση ετικετών	121
Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού	121
Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία	122
Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού	122

Εισαγωγή

Medit Link

Το Medit Link είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ κλινικών και εργαστηρίων για να παρέχει μια βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για κάθε μέρος.

Προσφέρει διαφοροποιημένες λειτουργίες με βάση τον τύπο και τα δικαιώματα κάθε λογαριασμού. Το πρόγραμμα παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση της ροής εργασιών, από σάρωση με στοματικούς σαρωτές και σαρωτές μοντέλων, παραγγελία περιστατικών και σχεδιασμό και παραγωγή αποκαταστάσεων.

Το Medit Link αποτελείται από μια διαδικτυακή υπηρεσία και μια εφαρμογή για υπολογιστή.

Επισκόπηση υπηρεσίας

		Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
		• Εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού • Αναζήτηση • Αναζήτηση και διαχείριση συνεργατών • Κοινή χρήση περιστατικών μέσω του Web Viewer με έναν σύνδεσμο με δυνατότητα κοινής χρήσης • Πρόσβαση σε περιστατικά από την εφαρμογή • Διαχείριση παραγγελιών	• Εισάγετε πληροφορίες φόρμας • Σάρωση • Διαχείριση παραγγελιών • Σύνδεση με CAD • Διαχείριση ασθενών
Κλινική	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε τους συνεργάτες και τις κλινικές σας και κάντε κοινοποίηση των περιστατικών. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, συνδέστε με CAD, κάντε παραγγελίες και διαχειριστείτε ασθενείς. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Μέλος	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Εργαστήριο	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε συνεργάτες και το εργαστήριό σας και κοινοποιήστε περιστατικά. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Εισάγετε πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, σύνδεση με CAD και διαχείριση παραγγελιών. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Μέλος	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Υπηρεσία Cloud

Το Medit Link υποστηρίζει την αυτόματη μεταφόρτωση/λήψη βάσεων δεδομένων και αρχείων μέσω του AWS (Amazon Web Services).

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud συγχρονίζονται αυτόματα με τους υπολογιστές πολλών χρηστών στην εταιρεία, ώστε να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα από οποιονδήποτε υπολογιστή ανά πάσα στιγμή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η ανάκτηση βάσει cloud διατηρούν όλα τα δεδομένα σας ασφαλή. Διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή ακόμα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης του υπολογιστή.

Η υπηρεσία cloud επιτρέπει στους συνεργαζόμενους οδοντιάτρους και τα εργαστήρια να κοινοποιούν γρήγορα δεδομένα χωρίς να υπάρχει η ταλαιπωρία της αποστολής με email ή της χειροκίνητης μεταφοράς των σαρώσεων. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασθενούς, κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται και μεταδίδονται με ασφάλεια. Η Medit συμμορφώνεται με ιατρικούς νόμους και κανονισμούς όπως το HIPAA και το GDPR.

Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών

Το Medit Link προσφέρει το δικό του σύστημα παραγγελιών.

- Το Medit Link επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντιατρικών εργαστηρίων και την κοινοποίηση δεδομένων γρήγορα και εύκολα.
- Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειριστείτε την κατάσταση της παραγγελίας.

Απαιτήσεις συστήματος

Σημείωση

Ανατρέξτε στις απαιτήσεις συστήματος για το Medit Scan for Clinics και το Medit Scan for Labs, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σάρωσης με τον σαρωτή σας.

Απαιτήσεις συστήματος για Windows

	Φορητός υπολογιστής & Επιτραπέζιος υπολογιστής
Επεξεργαστής	Intel Core i5 2.6 GHz ή νεότερο
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Κάρτα γραφικών	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) ή νεότερο / ή ισοδύναμη κάρτα γραφικών AMD
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 64 Bit (μη διαθέσιμο σε 32 Bit) ή νεότερη έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος για macOS

	Mac
Επεξεργαστής	M1 με 8πύρηνο, 7πύρηνο GPU, 16πύρηνο Neural Engine
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Λειτουργικό σύστημα	Monterey 12

Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία

Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης

	Προγράμματα περιήγησης
Υπολογιστής	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Ελάχιστο για κινητά

	Android	iOS
Συσκευή	Galaxy S7 ισοδύναμο ή νεότερο	iPhone 7 ισοδύναμο ή νεότερο
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Μνήμη RAM	3 GB ή περισσότερα	2 GB ή περισσότερα
AP	Νεότερο από Snapdragon 710	A10 Fusion


Εγκατάσταση σε Windows

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με προγράμματα απόκτησης σαρώσεων - Medit Scan for Clinics και Medit Scan for Labs.


1. Εκτελέστε το Medit_LinkSetup.exe.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε το φάκελο για την εγκατάσταση του Medit Link. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας και κάντε κλικ στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

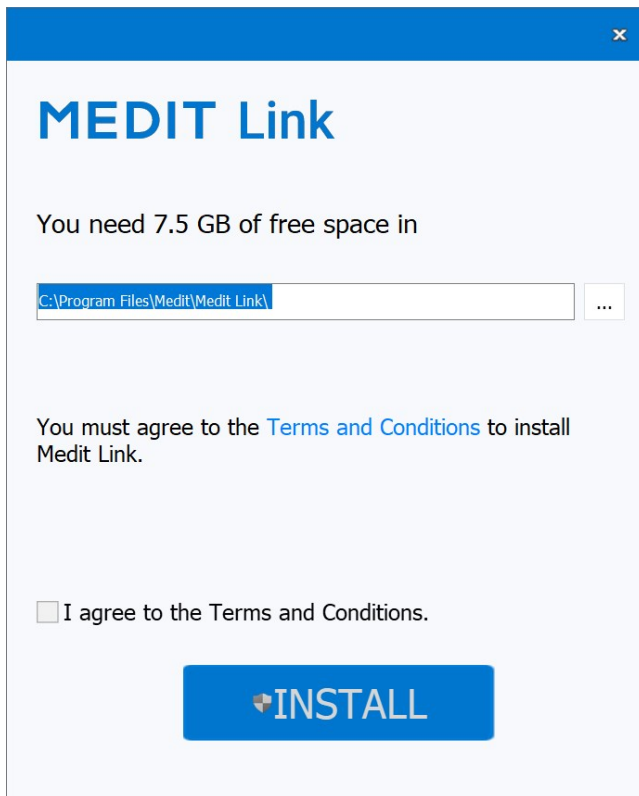

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σαρωτή είναι αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Η εγκατάσταση ενδέχεται να μην προχωρήσει εάν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας.
5. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

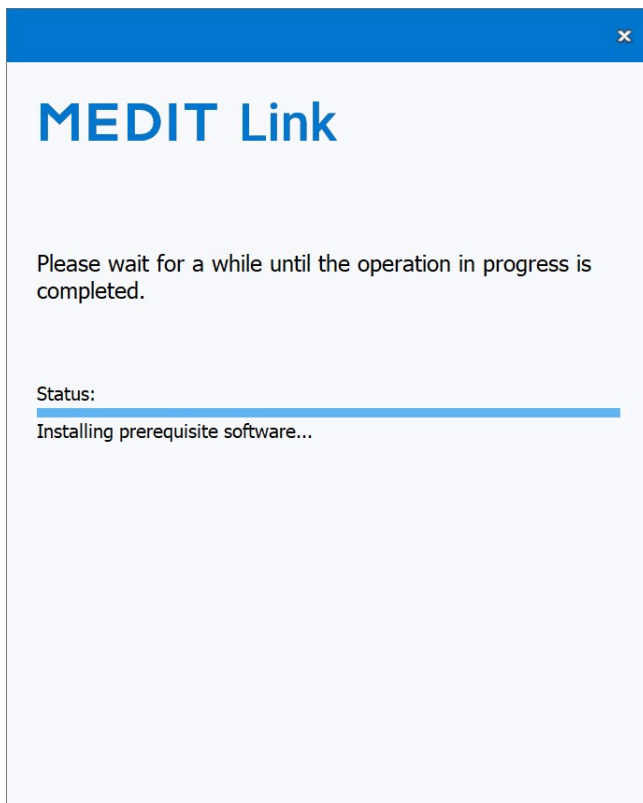

6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν δεν έχετε τον σαρωτή.

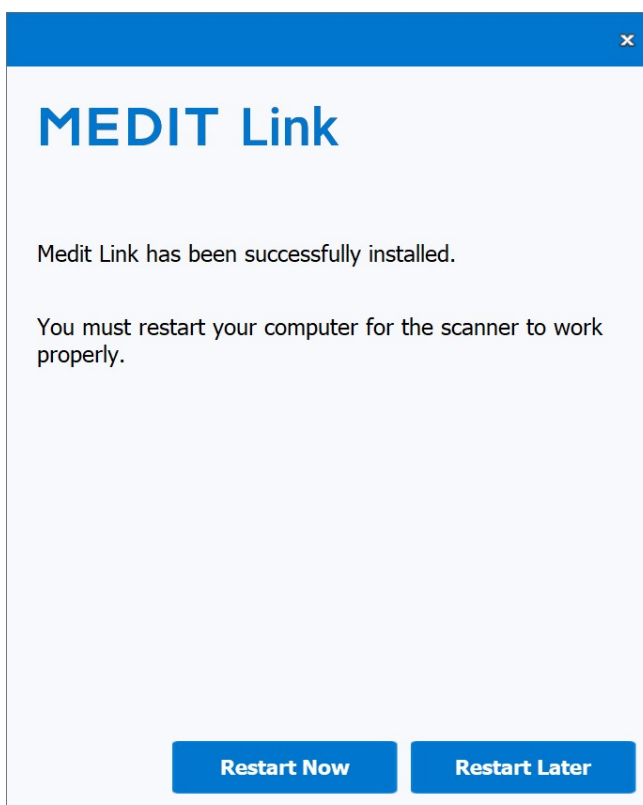


Σημείωση

Εάν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο σαρωτής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.


Εγκατάσταση σε macOS

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με το Medit Scan for Clinics.


1. Εκτελέστε το Medit_Link_x.x.x.pkg και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

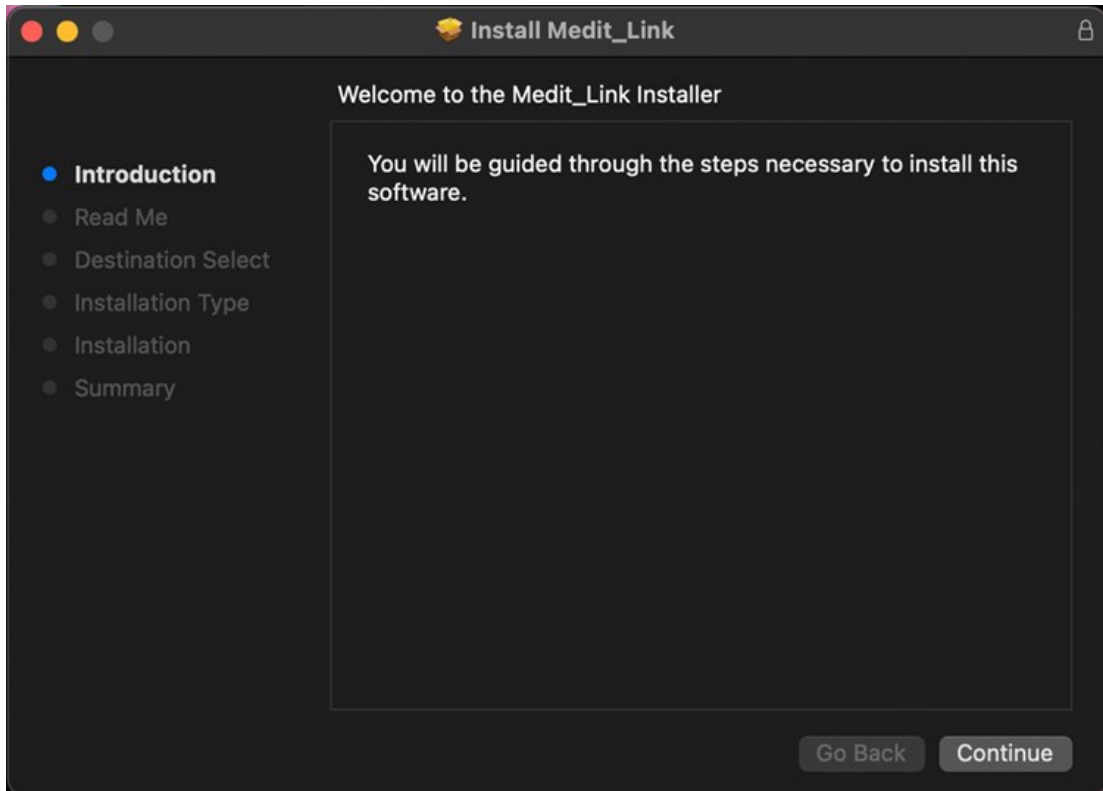


2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

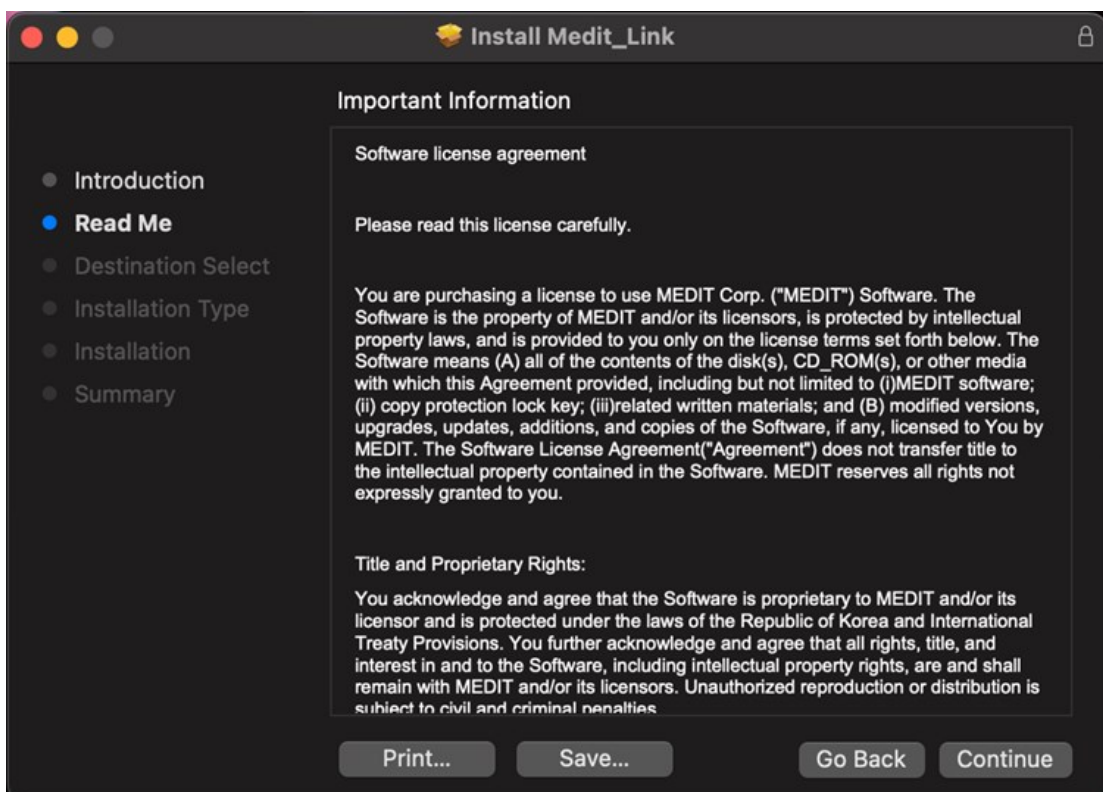

3. Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

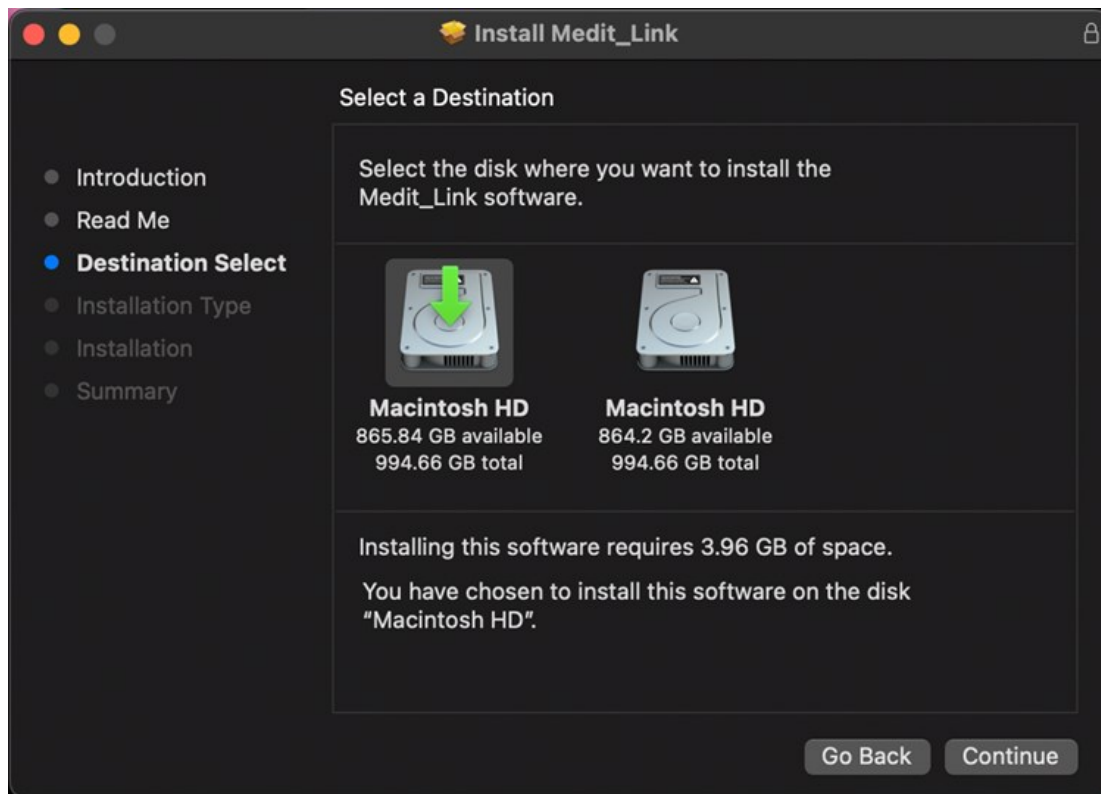


4. Κάντε κλικ στην «Αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης...» για να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης.

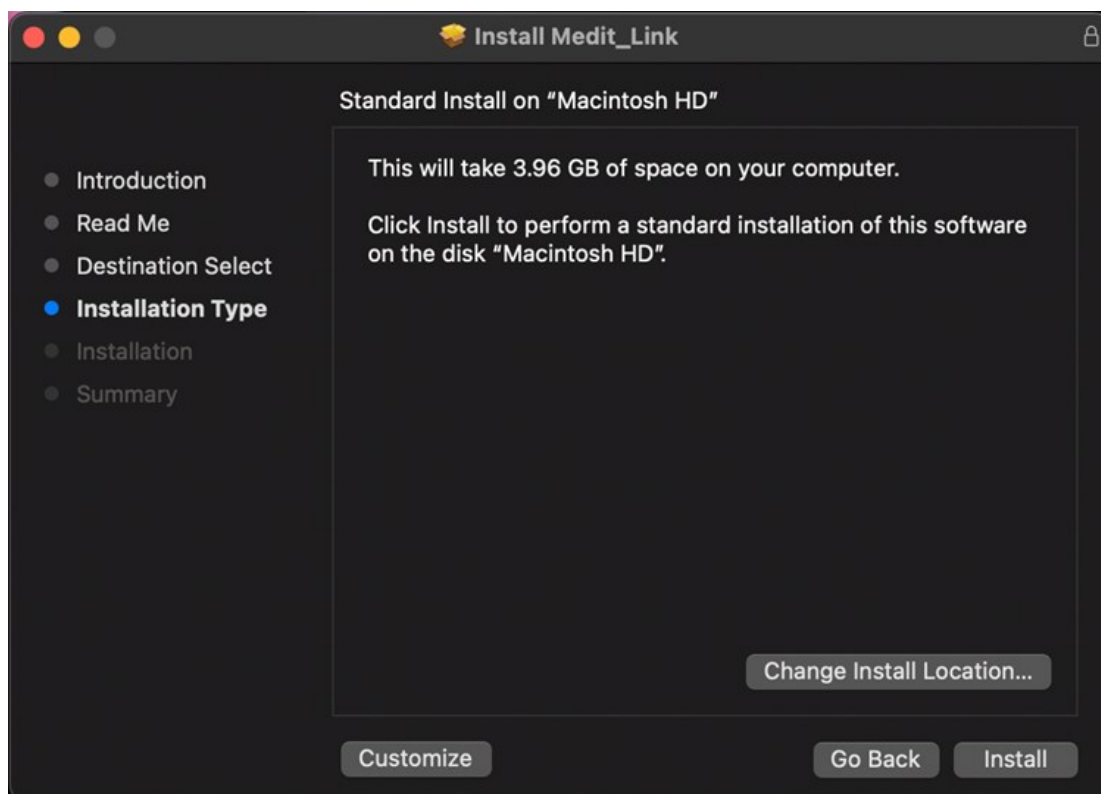


5. Κάντε κλικ στην «Εγκατάσταση» και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Mac για να επιτρέψετε την εγκατάσταση, εάν σας ζητηθεί.



6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

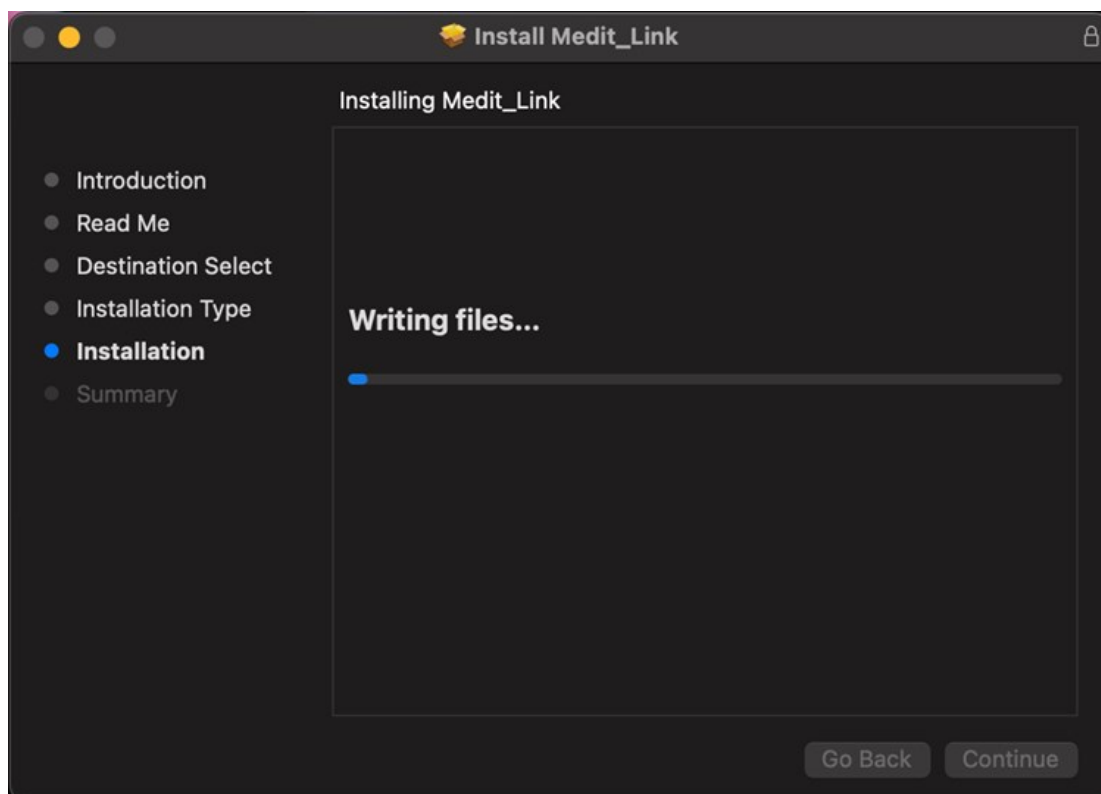


7. Κάντε κλικ στο «Κλείσιμο» για έξοδο από το παράθυρο εγκατάστασης.

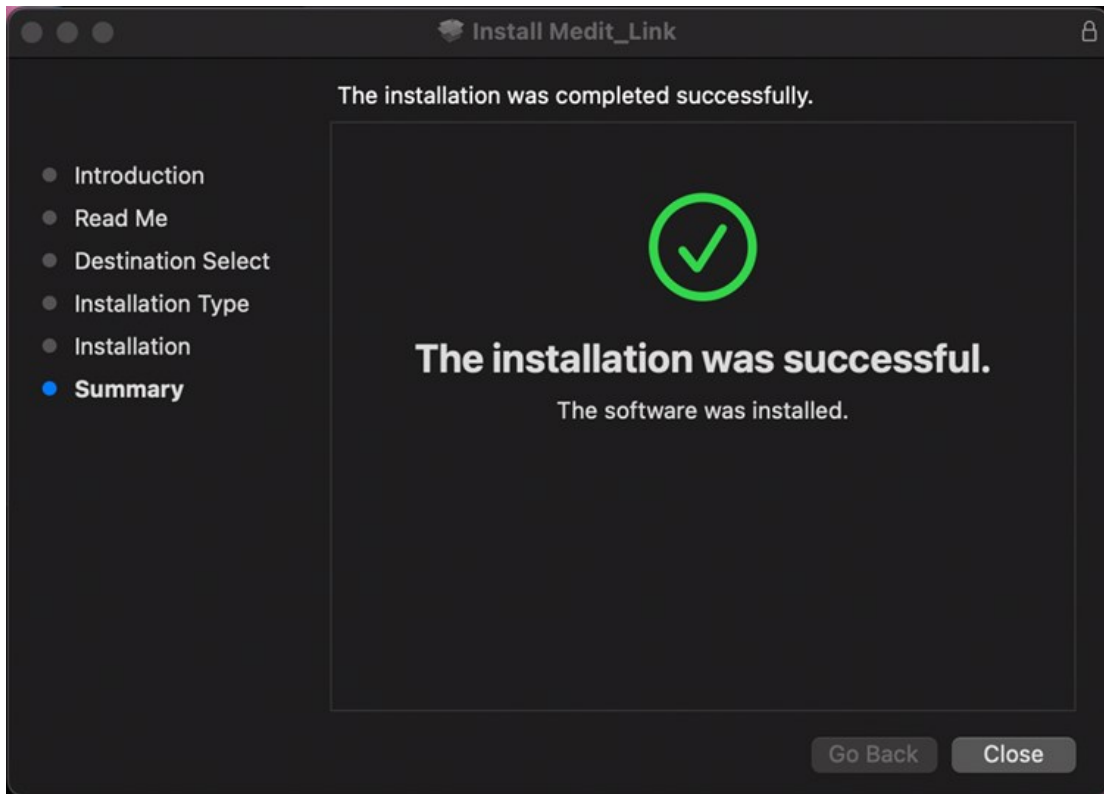

Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ιστοσελίδα Medit Link

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Medit Link στη διεύθυνση www.meditlink.com.

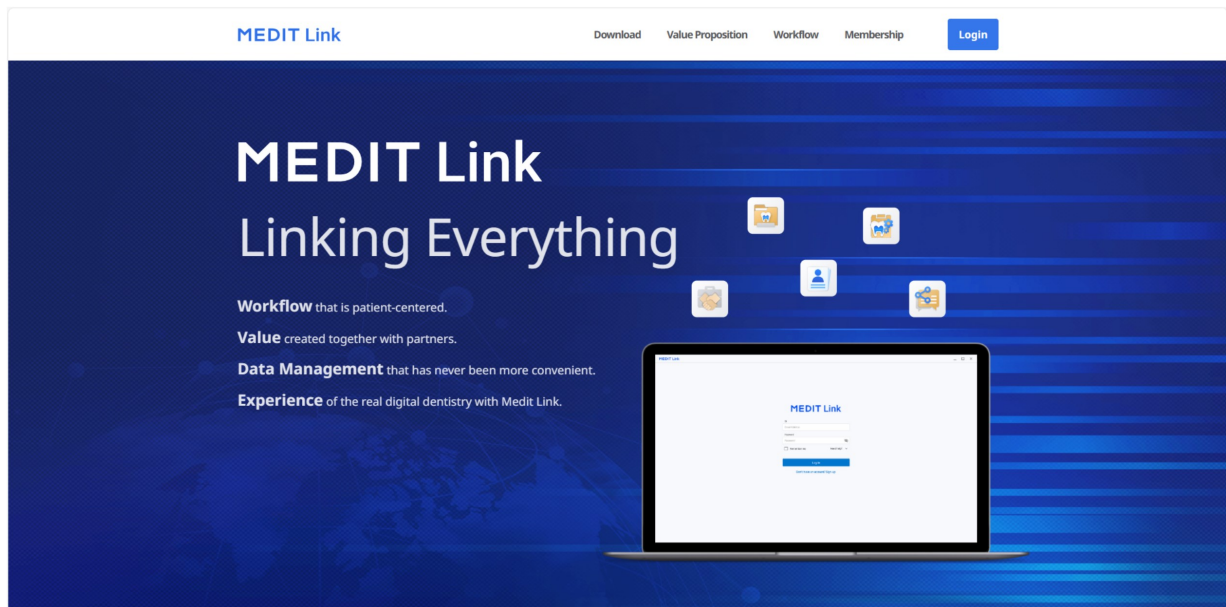

Σημείωση

Εγγραφείτε στο Medit Link Κίνας στη διεύθυνση www.meditlink.cn.

Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Medit Link, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που παρέχονται στο Medit Link αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ως κλινική ή εργαστήριο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους τέσσερις τύπους λογαριασμού για καταχώριση συνδρομής και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με πλήρεις ή περιορισμένες δυνατότητες και προνόμια, ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού.

- Κλινική - Διαχειριστής
- Κλινική - Μέλος
- Εργαστήριο - Διαχειριστής
- Εργαστήριο - Μέλος

Ο διαχειριστής είναι συνήθως εκπρόσωπος της εταιρείας σας και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Medit Link. Αντίθετα, ο λογαριασμός μέλους έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Για να εγγραφείτε σε συνδρομή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό; Κάντε εγγραφή». από τη σελίδα σύνδεσης.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Αφού διαβάσετε τις παρεχόμενες περιγραφές, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» στον επιθυμητό τύπο λογαριασμού.



Clinic



Lab

Administrator
Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator
Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member
Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member
Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country ▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

View

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Εισάγετε το όνομα κλινικής ή εργαστηρίου και, ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο λογαριασμού, κάντε τα εξής:
 - Εάν κάνετε εγγραφή ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο «Έλεγχος διαθεσιμότητας» για να δείτε εάν το όνομα που καταχωρίσατε είναι διαθέσιμο.
 - Εάν κάνετε εγγραφή ως μέλος, κάντε κλικ στην «Αναζήτηση.» Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή της εταιρείας σας προτού εγγραφείτε.
5. Συμπληρώστε την υπόλοιπη φόρμα εγγραφής και κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

Σημείωση

Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ κατά την εγγραφή, θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία της Medit.

6. Θα σας σταλεί ένα email επαλήθευσης.
7. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που λάβατε.

Σύνδεση και Αρχική σελίδα

1. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας στη σελίδα σύνδεσης και κάντε κλικ στην «Σύνδεση».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί εάν δεν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

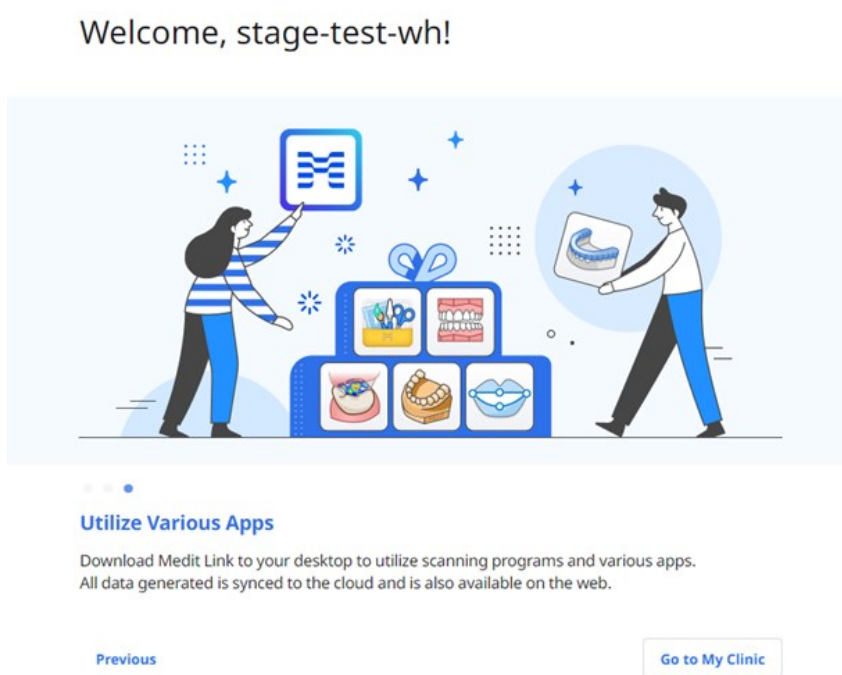

Σημείωση


Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Medit Link, τα στοιχεία της κλινικής ή του εργαστηρίου σας θα πρέπει να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση στην κλινική μου» ή «Μετάβαση στο εργαστήριο μου» και εισάγετε τις πληροφορίες της κλινικής ή του εργαστηρίου, όπως το όνομα της επιχείρησης, οι εικόνες εξωφύλλου/λογότυπου, οι υπηρεσίες που προσφέρετε, η διεύθυνση γραφείου, ο αριθμός γραφείου κ.λπ.
4. Οι πληροφορίες που εισάγονται στην αρχική σελίδα μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή στο My Info > καρτέλα Η κλινική μου ή Το εργαστήριο μου στην Ιστοσελίδα Medit Link.

Dashboard

Επισκόπηση Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα - τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

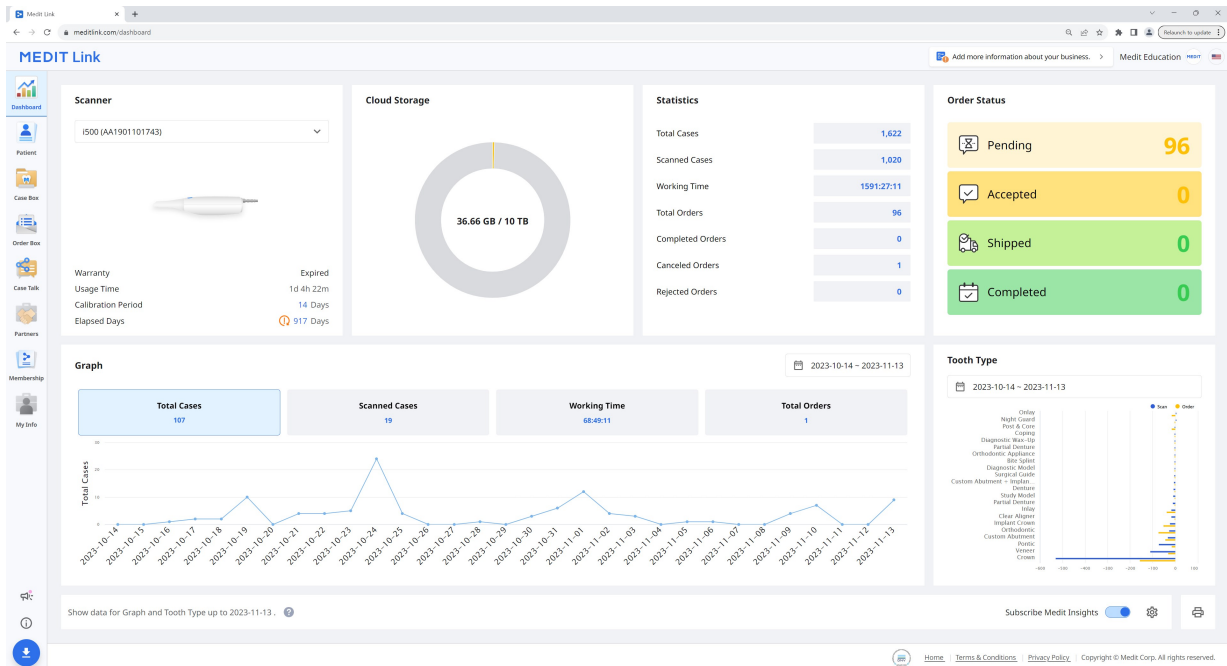

Τα γραφήματα και τα διαγράμματα στον πίνακα εργαλείων εμφανίζουν στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link.

Σαρωτής	Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς σαρωτές, συμπεριλαμβανομένου, της εγγύησης, του χρόνου χρήσης του σαρωτή, του διαστήματος βαθμονόμησης και του χρόνου που έχει περάσει από την βαθμονόμηση.
Αποθήκευση Cloud	Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας του cloud και της ποσότητας που χρησιμοποιείται.
Στατιστικά	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση εργασίας.
Κατάσταση παραγγελίας	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση παραγγελίας.
Γράφημα	Γράφημα πληροφοριών εργασίας ανά περίοδο.
Τύπος δοντιού	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των σαρώσεων και τις παραγγελίες ανά πληροφορίες θεραπειάς.


Medit Insights

Το Medit Insights είναι μια υπηρεσία αναφοράς που σας βοηθά να αναλύσετε τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης σας.



Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Medit Insights

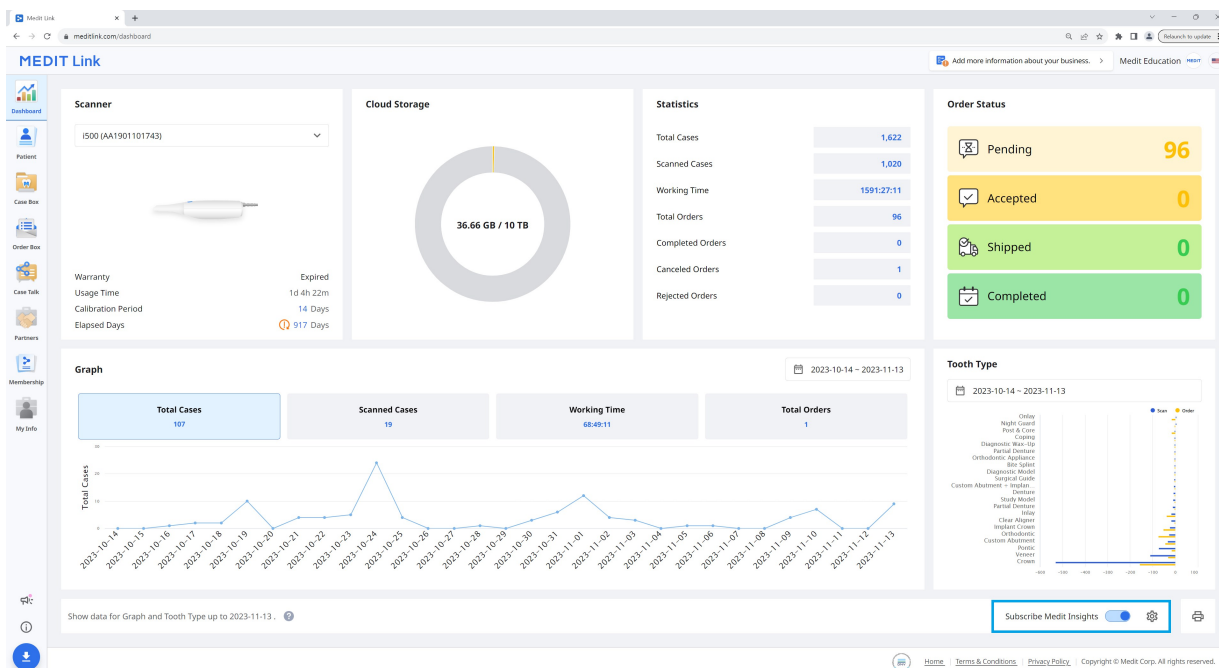

Εγγραφή στο Medit Insights

Μπορείτε να λάβετε ένα email αναφοράς τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαδικασία εγγραφής. Απλώς ενεργοποιήστε την «Εγγραφή σε Medit Insights».

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για τον λογαριασμό του Medit Link, μπορείτε να ορίσετε μια άλλη διεύθυνση email για να λαμβάνετε τα Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα, θα λαμβάνετε ένα email με στατιστικά στοιχεία όπως εμφανίζεται παρακάτω.

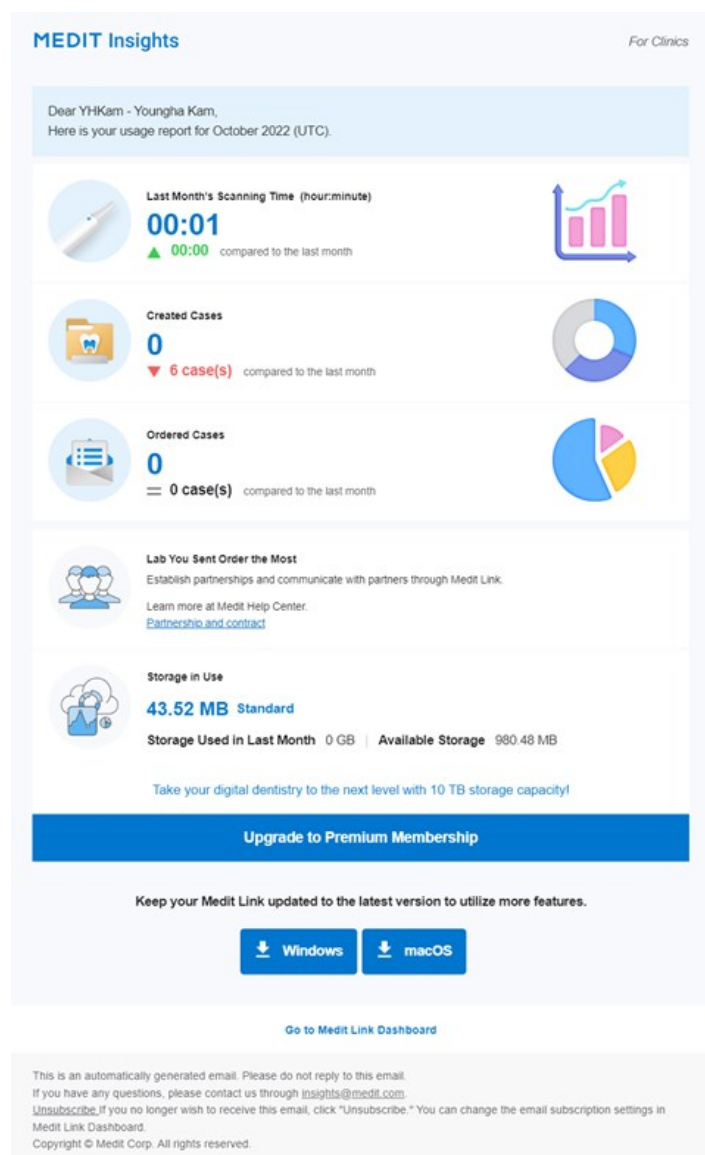

Banner	Το Medit παρέχει χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες εδώ. * Εάν δεν θέλετε να δείτε το banner, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμφωνία Μάρκετινγκ και Προώθησης από το Οι πληροφορίες μου>Ο λογαριασμός μου.
Στατιστικές πληροφορίες	Εμφανίζονται οι πληροφορίες στατιστικών, όπως ο χρόνος σάρωσης, η δημιουργία περιστατικών, οι πιο πολλές παραγγελίες εργαστηρίου κ.λπ.
Λήψη Medit Link	Το κουμπί παρέχει τον σύνδεσμο για λήψη του Medit Link.
Dashboard	Όλες οι στατιστικές πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες του Dashboard σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Dashboard.


Απεγγραφή από το Medit Insights

Απενεργοποιήστε την «Εγγραφή στο Medit Insights» στο Dashboard ή κάντε κλικ στην «Απεγγραφή» στο email που λάβατε.

Patient

Μπορείτε να διαχειριστείτε περιστατικά με βάση το όνομα και το ID του ασθενούς.


Όλοι οι ασθενείς που έχουν εγγραφεί μέσω της εφαρμογής του Medit Link εμφανίζονται σε λίστα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των ασθενών και των περιστατικών τους.

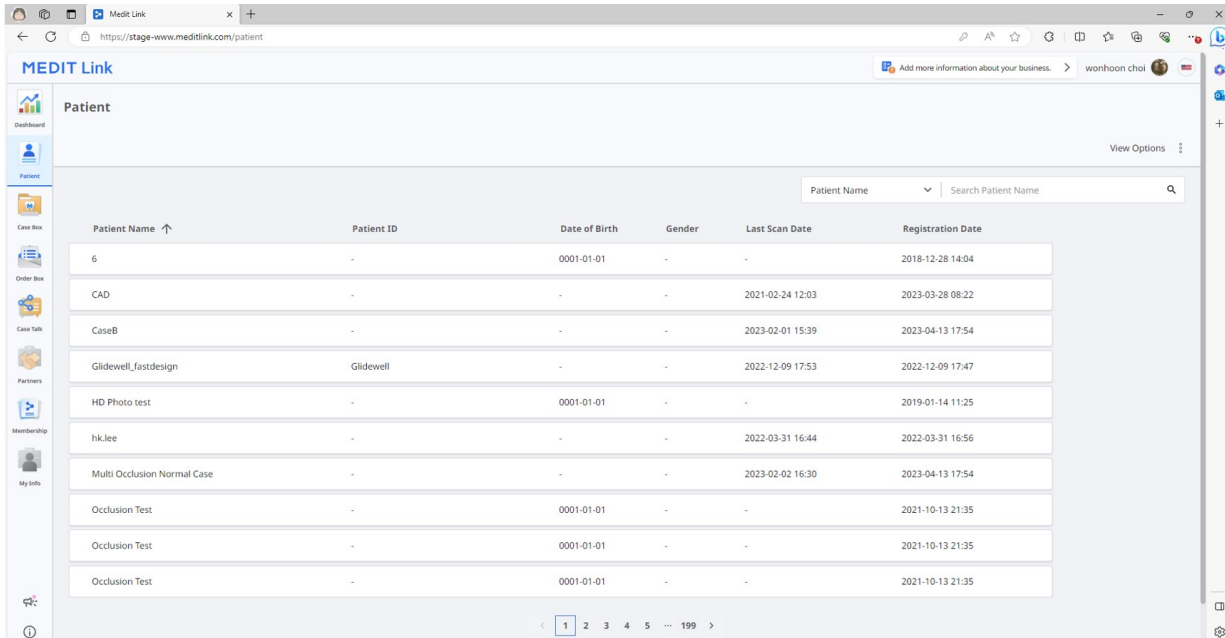

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hik.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Αναζήτηση ασθενούς

1. Επιλέξτε τα κριτήρια αναζήτησής σας μεταξύ Όνομα ασθενούς ή ID ασθενούς από το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας ασθενών.

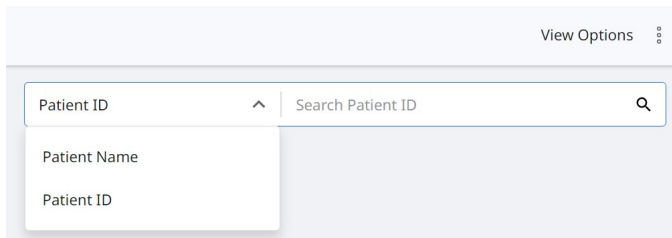

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Εισάγετε το όνομα ασθενούς ή το ID ασθενούς για αναζήτηση σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης.
3. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο ασθενείς με το όνομα ή το ID ασθενούς που έχει εισαχθεί.

Case Box/Work Box

Το Case Box (Κλινική) ή το Work Box (Lab) εμφανίζει όλα τα περιστατικά που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στην εφαρμογή του Medit Link. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος.

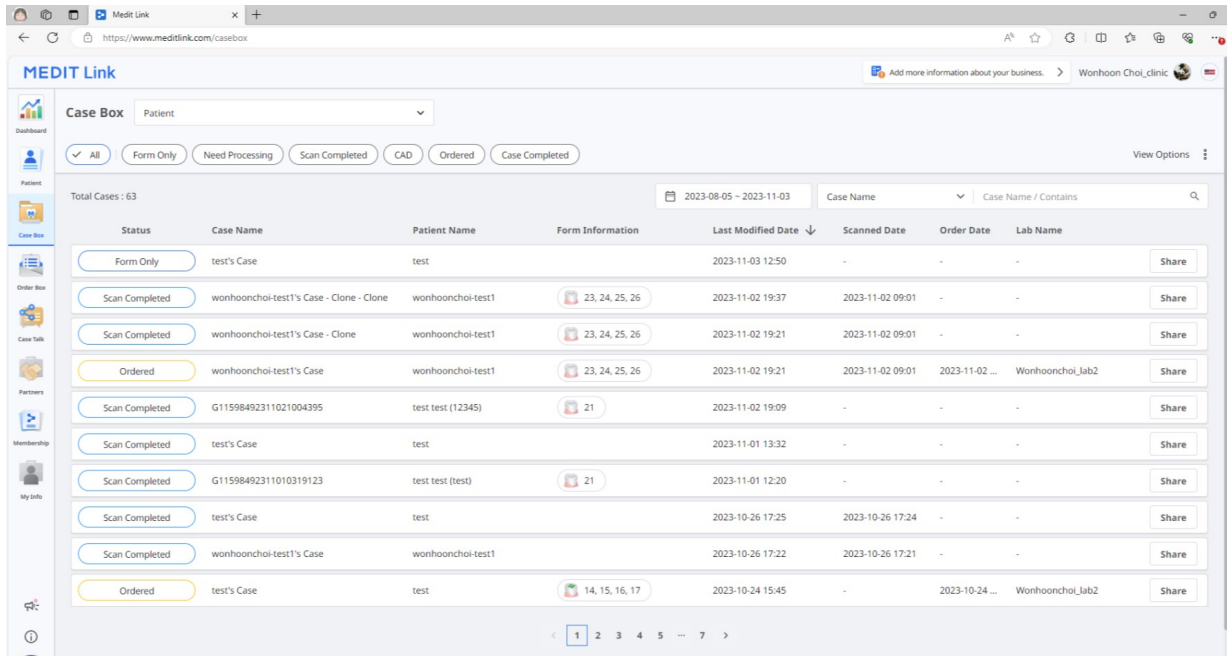


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'Total Cases: 63' indicator is present. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button. The table is paginated with a '1' button highlighted.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Φιλτράρισμα περιστατικού


Φιλτράρισμα κατά ασθενή

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά κατά ασθενείς. Είναι χρήσιμο όταν βρίσκετε περιστατικά για συγκεκριμένους ασθενείς.

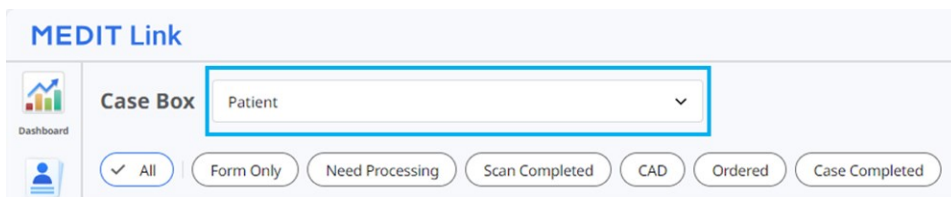

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing a search bar with the text 'Patient'. Below the search bar are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενούς στο πεδίο αναζήτησης.

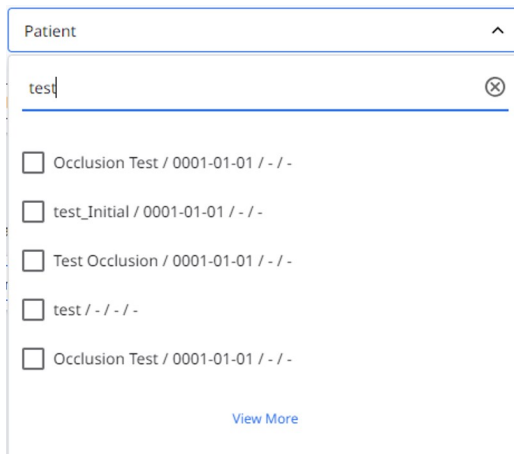

The screenshot shows the search results dropdown. The search bar contains the text 'test'. Below the search bar is a list of search results, each with a checkbox and a label: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is at the bottom.

2. Επιλέξτε έναν ασθενή από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Μόνο περιστατικά για επιλεγμένους ασθενείς εμφανίζονται στη λίστα, διευκολύνοντας την εύρεση των περιστατικών στα οποία θέλετε να εργαστείτε.

MEDIT Link

Case Box
Patient

☒ All
☐ Form Only
☐ Need Processing
☐ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

Total Cases: 63
2023-08-05 ~ 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

Φιλτράρισμα κατά κατάσταση

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά με βάση την κατάστασή τους.

All
☒ Form Only
☐ Need Processing
☒ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

- Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην κατάσταση που θέλει να δει. Το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει μόνο περιστατικά με την επιλεγμένη κατάσταση.
- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Ο ακόλουθος τύπος κατάστασης παρέχεται βάσει του τύπου λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Εργαστήριο)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Φιλτράρισμα κατά διάρκεια

Μπορείτε να φιλτράρετε και να προβάλλετε περιστατικά που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά την καθορισμένη περίοδο.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Επιλέξτε το εύρος.

Last 30 Days ▼

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν εντός αυτής της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τη χθεσινή ημερομηνία.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 90 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 90 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών αυτού του μήνα.
- Προηγούμενος μήνας: Εμφάνιση περιστατικών του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αναζήτησης για να αναζητήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα.

Case Name ▼


Case Name / Contains



Επιλογές αναζήτησης με βάση τον λογαριασμό κλινικής/εργαστηρίου:

Case Box (Κλινική)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου
Work Box (Εργαστήριο)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID παραγγελίας

Λεπτομέρειες περιστατικού

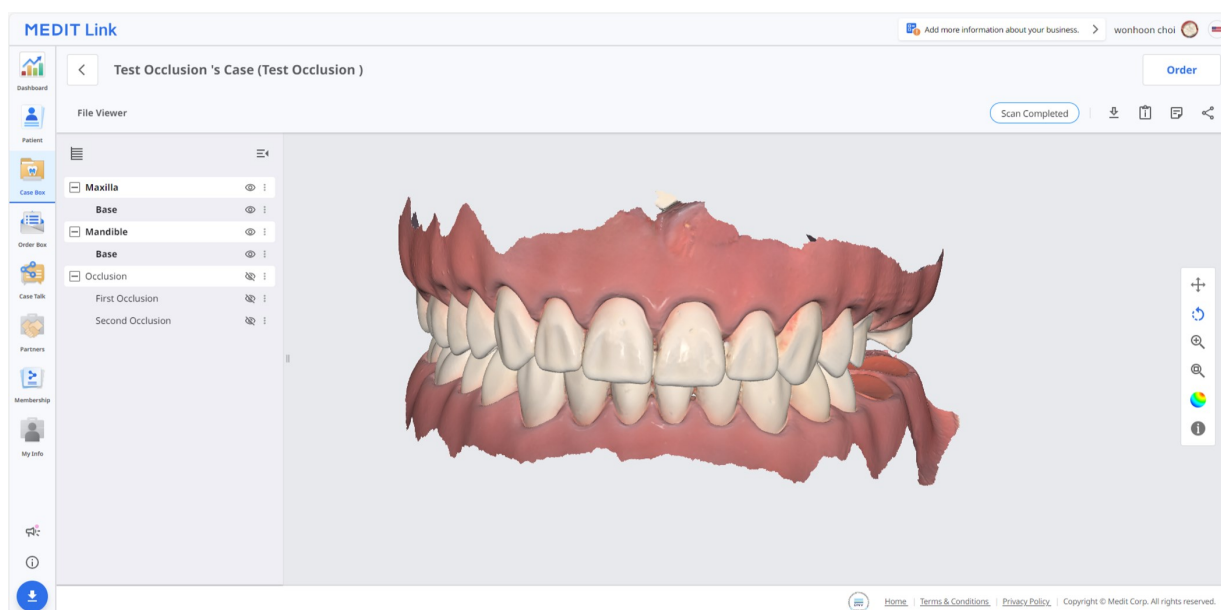

Τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης περιστατικών παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφάνιση της κατάστασης του περιστατικού.
	Μετάβαση σε Case Box/Order Box	Παρέχετε μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Λήψη	Κάντε λήψη των αρχείων στο περιστατικό στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις και Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινή χρήση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα.

Order Box/In Box

Το Order Box (Κλινική) ή In Box (Εργαστήριο) εμφανίζει παραγγελθείσα περιστατικά στην εφαρμογή του MEDIT Link.

Λεπτομέρειες παραγγελίας

The screenshot displays the MEDIT Link web application interface. The top navigation bar includes the MEDIT Link logo and a user profile section. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)', contains a form with fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The right panel, titled 'Order List', displays a table with columns for No., Type, Method, Material, and Shade, listing four orders (23, 24, 25, 26) all of type 'Inlay'.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/ παραλαβή).
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
5	Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
6	Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.


Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες για την παραγγελία, όπως αναγνωριστικό παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημείωμα και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα που καθορίζετε, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του «Case Talk» στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

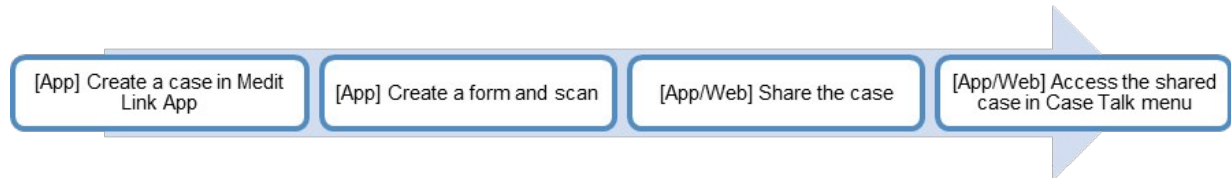

Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

Δημιουργία Case Talk

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε στο Case Box/Work Box.

1. Βρείτε ένα περιστατικό που θέλετε να κοινοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» στα δεξιά.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε.

Share through Case Talk ?

File List

☒	Maxilla			
☒	Base	meditMesh	3,449KB	
☒	Mandible			
☒	Base	meditMesh	2,926KB	
☒	Occlusion			
☒	First Occlusion	meditMesh	662KB	
☒	Second Occlusion	meditMesh	611KB	
☒	Face Scan Data			

6 items selected. 15.23MB/200 MB i

Share With

Share with Anyone ▼

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

[Close](#) [Get Link](#)

3. Ορίστε τον τύπο της άδειας για κοινοποίηση και τις επιλογές κοινοποίησης.
4. Κάντε κλικ στη «Λήψη συνδέσμου» για να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο.

Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης

Share through Case Talk ?

Share With

Share with specific people ▼

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via

▼ + ☰

PIN Code

☐ PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

[Close](#) [Get Link](#)

Κοινοποίηση με	• Κοινοποίηση με οποιονδήποτε Δημιουργεί έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα αρχεία με οποιονδήποτε. • Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα Δημιουργεί και στέλνει έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο σε συγκεκριμένα άτομα.
Κοινοποίηση μέσω	Εάν επιλέξετε «Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα», μπορείτε να κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο με συγκεκριμένα άτομα με διάφορους τρόπους. • Διεύθυνση email • SMS • Συνεργάτες
Ημερομηνία λήξης	Ορίστε την ημερομηνία λήξης για τον σύνδεσμο. Μετά τη λήξη του συνδέσμου, τα άτομα με τα οποία κάνατε κοινοποίηση δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα αρχεία. Μπορείτε να παρατείνετε την περίοδο λήξης για έως και 90 ημέρες από σήμερα.
Κώδικας PIN	Ορίστε έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων.
Κοινοποιήστε το όνομα του ασθενούς	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλα τα άτομα που διαθέτουν τον σύνδεσμο θα δουν το όνομα του ασθενούς.
Παραχωρήστε άδεια για λήψη	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τον σύνδεσμο μπορούν να κάνουν λήψη των αρχείων.
Επιτρέψτε σχόλια	• Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κοινόχρηστου συνδέσμου. • Εάν καταργήσετε την επιλογή, ο παραλήπτης θα μπορεί να δει μόνο τα σχόλιά σας, αλλά δεν θα μπορεί να προσθέσει τα δικά του.
Σχόλιο	Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στην ενότητα σχολίων.

Λεπτομέρειες Case Talk

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία στο κοινόχρηστο περιστατικό. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Λεπτομέρειες Case Talk.

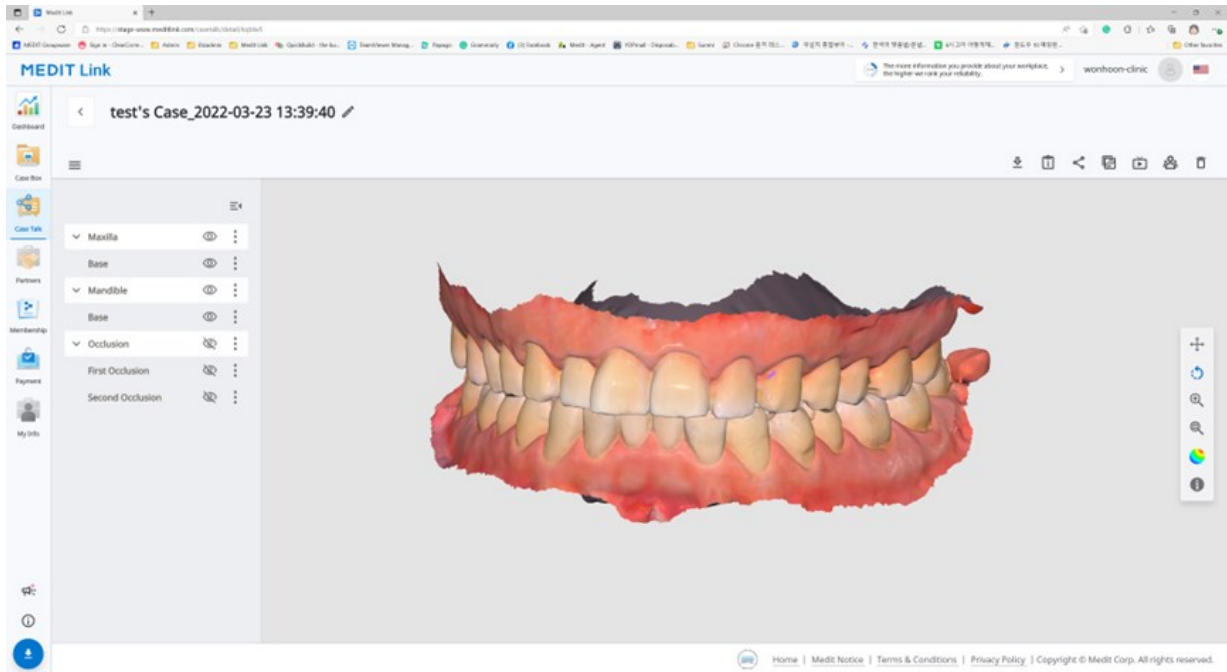

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων του περιστατικού στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τη ρύθμιση κοινοποίησης.
	Αντιγραφή συνδέσμου	Αντιγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο στο πρόχειρο. Ο αντιγραφμένος σύνδεσμος εμφανίζει τα κοινόχρηστα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Διαγραφή	Διαγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο. Ο διαγραφμένος κοινόχρηστος σύνδεσμος δεν είναι πλέον προσβάσιμος.

Σημείωση


Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Web Viewer

Μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα δεδομένα μέσω του Case Talk σε ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου.

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας σχολιασμούς και σχόλια.

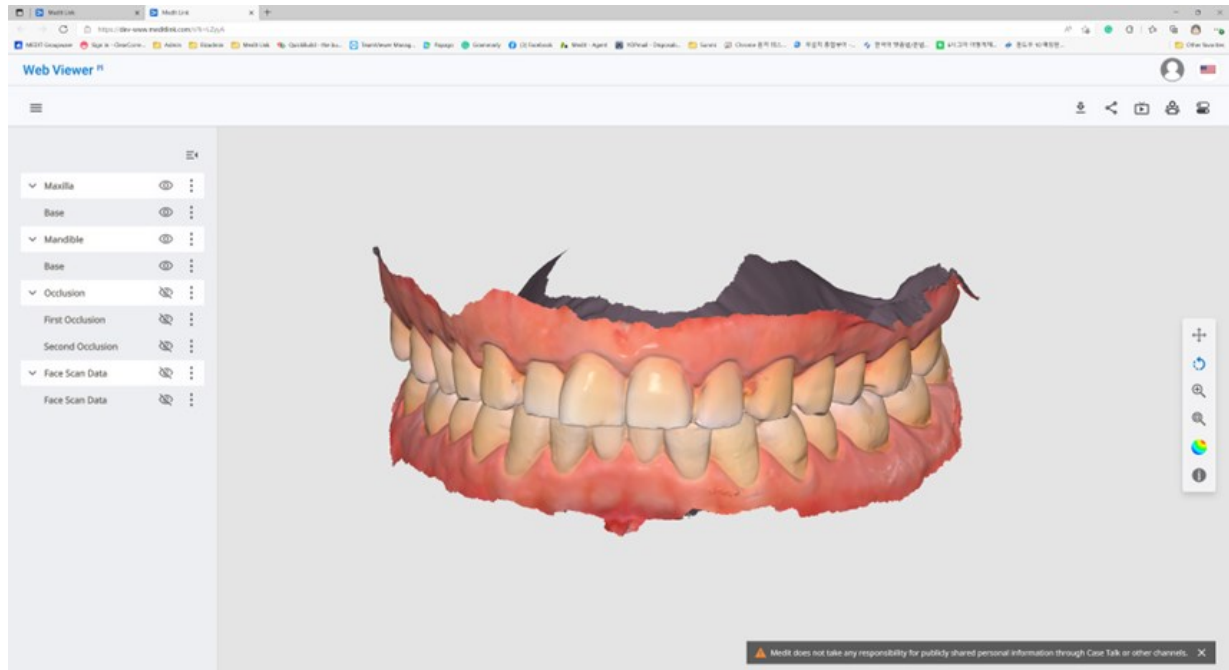

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων αυτού του περιστατικού στον υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις κοινοποίησης.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Αρίθμηση δοντιών	Αλλαγή του συστήματος σήμανσης των δοντιών.


Σημείωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Σχολιασμός

Μπορείτε να προσθέσετε σχολιασμούς σε μια καθορισμένη θέση στο 3D μοντέλο. Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο μπορεί να δει τους σχολιασμούς που προσθέτετε.

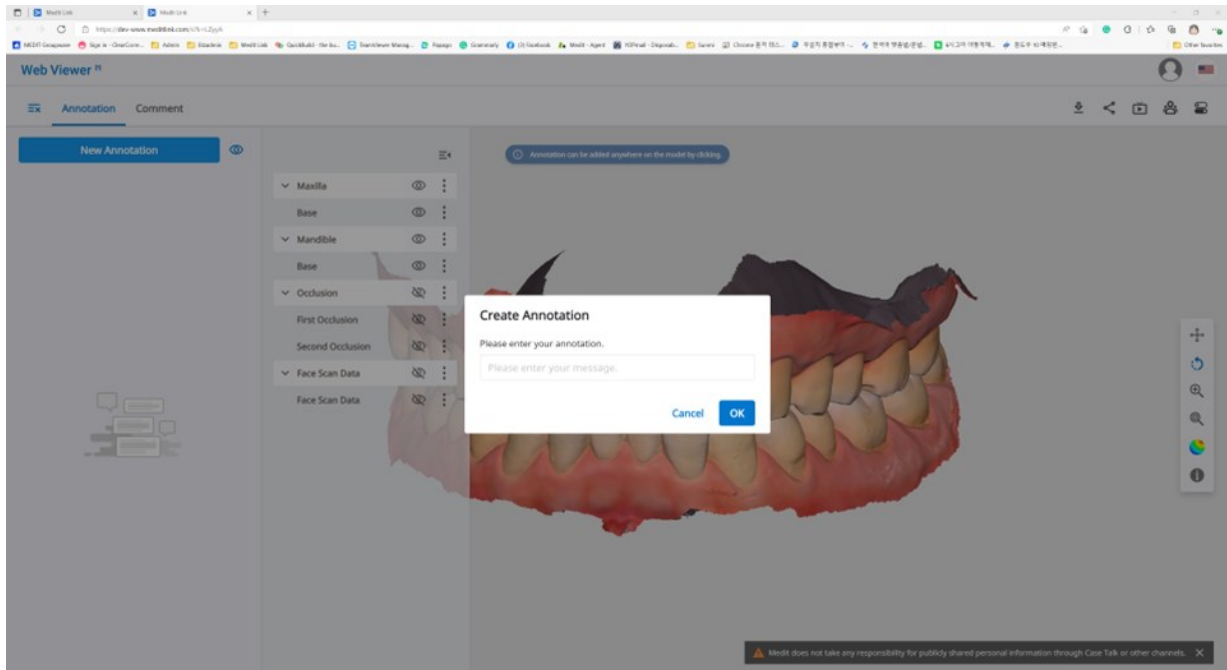

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχολιασμός

1. Βρείτε το εικονίδιο μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε την καρτέλα «Σχολιασμός». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Νέος σχολιασμός» για να προσθέσετε έναν σχολιασμό οπουδήποτε στα δεδομένα με ένα κλικ.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK» για να το αποθηκεύσετε.

A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχολιασμούς ως ένα απλό κανάλι επικοινωνίας. Κάντε κλικ στον σχολιασμό που δημιουργήθηκε για να εισάγετε μια απάντηση και πατήστε «Αποστολή».

A screenshot of the interface for replying to an annotation. It shows the username 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with a trash icon and a close icon. Below the username is the text 'Annotation 1' and a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο μέσω της καρτέλας «Σχόλιο» στο μενού του Web Viewer.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχόλιο

Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο


Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση της οθόνης σας σε πραγματικό χρόνο.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Live

1. Κάντε κλικ στο «Live» για να κοινοποιήσετε την οθόνη του Web Viewer με τους συνδεδεμένους χρήστες.

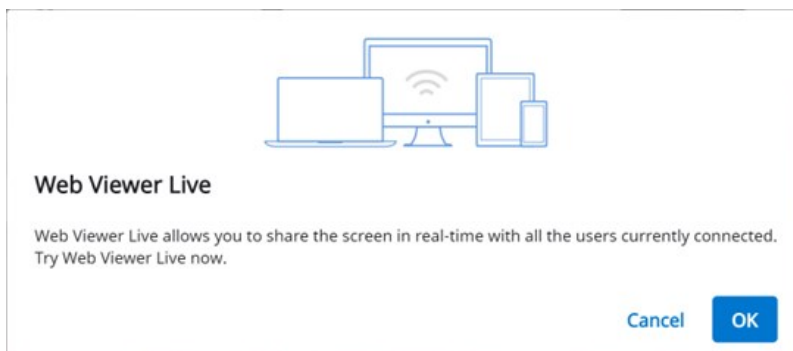


2. Κάντε κλικ στο «OK» για να ξεκινήσει η κοινοποίηση της οθόνης σας.
3. Άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο θα πρέπει να αποδεχτούν την κοινοποίηση οθόνης.
4. Η οθόνη του χρήστη που ξεκίνησε την κοινοποίηση οθόνης εμφανίζεται σε συγχρονισμό με την οθόνη του ατόμου που έλαβε το αίτημα.

Δέντρο δεδομένων



Όλα τα δεδομένα ομαδοποιούνται και εμφανίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε δεδομένα, να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια και ούτω καθεξής.

Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων

Εμφάνιση/Απόκρυψη	Κάντε κλικ στο εικονίδιο «ματιού» για εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων από την προβολή. Ελέγξτε την ορατότητα των δεδομένων ως ομαδικό ή μεμονωμένο αρχείο.
-------------------	--

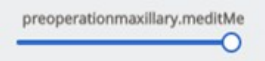Αδιαφάνεια	Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από ένα ορατό στοιχείο για να δείτε το ρυθμιστικό για αδιαφάνεια. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη διαφάνεια των δεδομένων σας. 
Εκτεταμένο μενού	Το εκτεταμένο μενού παρέχεται στη δεξιά πλευρά κάθε στοιχείου του Δέντρου δεδομένων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων εκτός από το τρέχον. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των τρεχόντων δεδομένων.

3D έλεγχοι μοντέλου

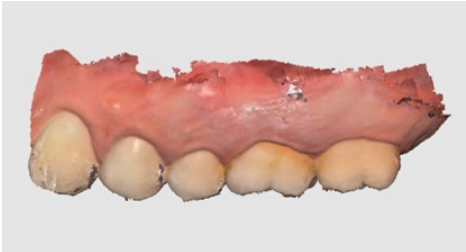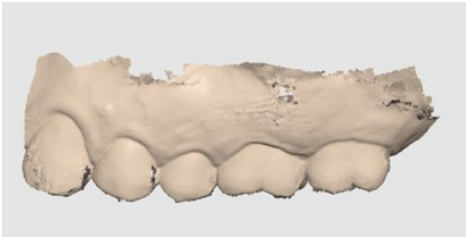	Μετακίνηση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίας εμφάνισης μοντέλου	Εμφάνιση δεδομένων με πραγματικά χρώματα υφής. 
		Εμφάνιση δεδομένων με ένα μόνο χρώμα. 

Partners

Μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς συνεργάτες ώστε να ζητήσετε μια συνεργασία και να προβάλετε τη λίστα με τους τρέχοντες συνεργάτες.


Σημείωση

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα Google Maps δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

Αναζήτηση συνεργατών


Μπορείτε να αναζητήσετε χρήστες του Medit Link με βάση το όνομα ή/και τη διεύθυνση της επιχείρησής τους.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα συνεργασίας σε μια επιχείρηση με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

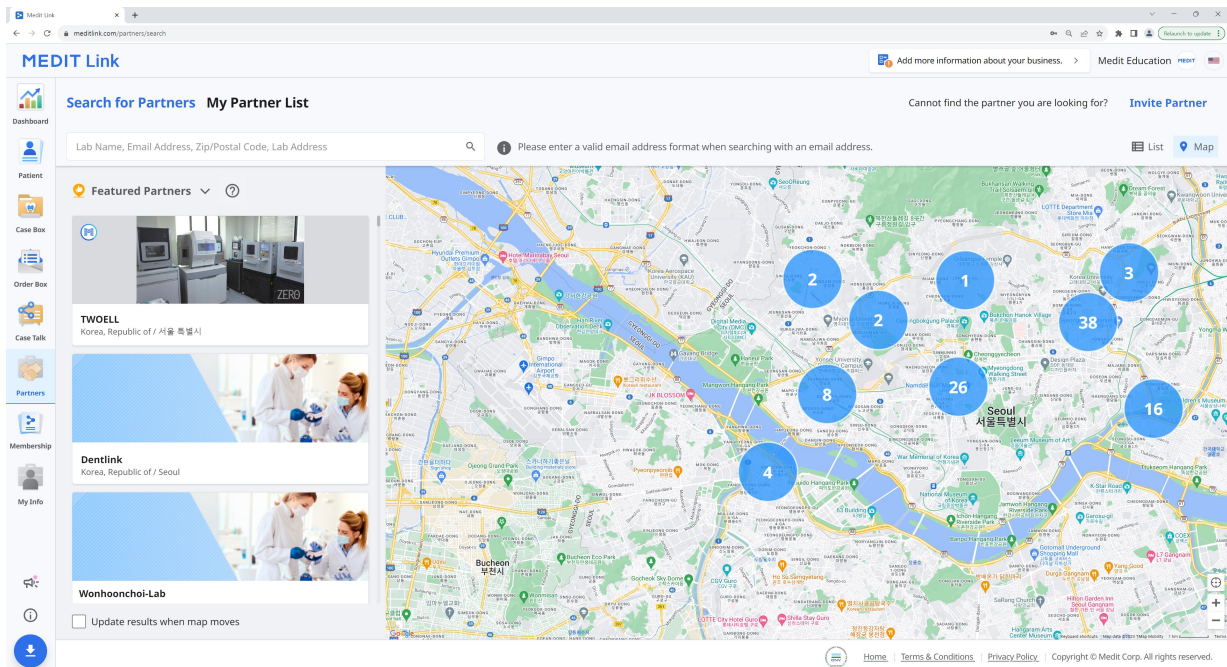

Η Λίστα συνεργατών μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνεργασίες με όλες τις υπάρχουσες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σας από τη λίστα συνεργατών μου.

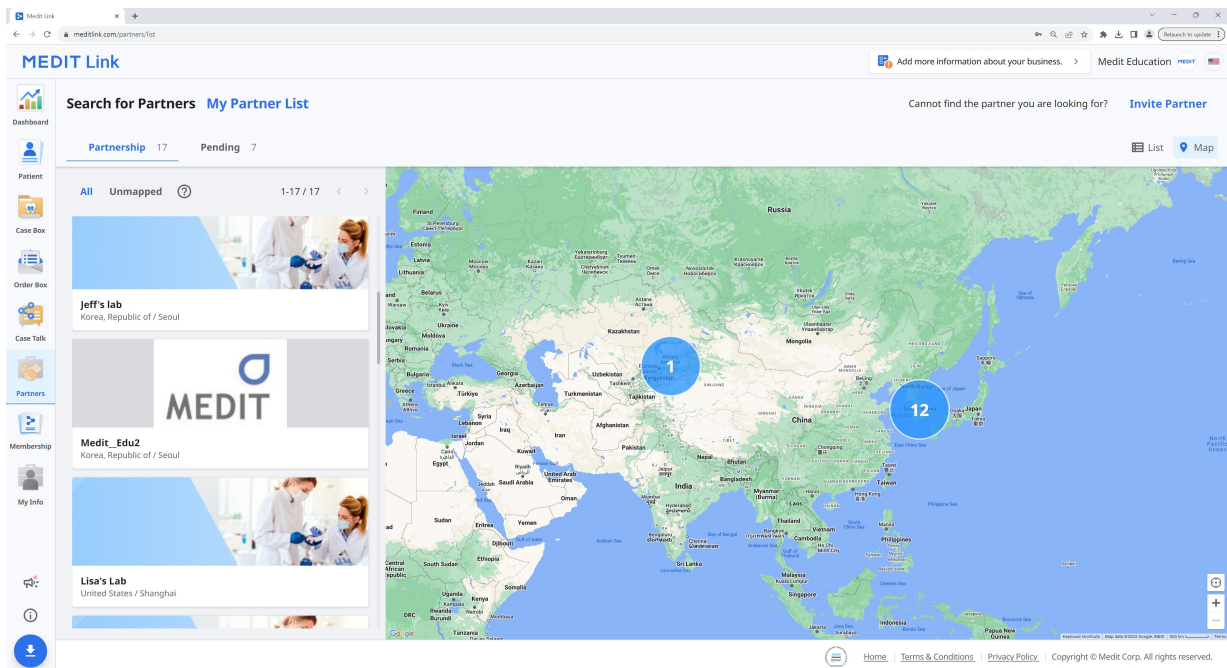

Πρόσκληση συνεργάτη

Εάν υπάρχει μια κλινική ή ένα εργαστήριο με τα οποία θέλετε να συνεργαστείτε, μπορείτε να κάνετε πρόσκληση για εγγραφή στο Medit Link. Η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα μόλις αποδεχτούν την πρόσκληση.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση συνεργάτη» στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email της επιχείρησης με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε και στείλτε μια πρόσκληση με αίτημα συνεργασίας.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Μόλις η προσκεκλημένη εταιρεία αποδεχτεί την πρόσκληση και εγγραφεί στο Medit Link, η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Membership

Η πολιτική συνδρομής του Medit Link στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο εκτεταμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, επεκτείνοντας σταδιακά στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών που βασίζονται στην πλατφόρμα cloud.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας μια πιο συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία με τη νέα πολιτική συνδρομής μας.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής:

Τυπικό

- Δωρεάν τυπικό πρόγραμμα για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες
- 1 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για νέους χρήστες

Premium

- Πρόγραμμα επί πληρωμή
- 10 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για χρήστες με πολλά περιστατικά και διάφορους τύπους δεδομένων
- Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος ενός μήνα

	Τυπικό	Premium
Αποθήκευση Cloud	1 GB	10 TB
Μηνιαία χρέωση	Δωρεάν	0,99 \$/μήνα
* Η Αποθήκευση Cloud δεν υπολογίζει τον χώρο που καταλαμβάνουν τα Ακατέργαστα δεδομένα.		

Σημείωση

Τα προγράμματα συνδρομής θα είναι διαθέσιμα για το Medit Link Κίνας. Μπορείτε να λάβετε το πρόγραμμα Premium δωρεάν μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της λειτουργίας.

Συνδρομή

The screenshot displays the Medit Link membership dashboard. The 'My Plan' section shows the 'Standard' plan, which is free. The 'Cloud Storage' section shows a usage of 558.87 MB out of 1 GB. Below this, there is a 'Set Period' dropdown and a 'Total Selected' section. The 'Total Selected' section lists two items: 'Raw Data' (27.50 GB) and 'Result Files & Attachments' (558.87 MB). The dashboard also features a sidebar with navigation links and a footer with legal information.

Το Πρόγραμμα μου

Στην αριστερή πλευρά, μπορείτε να δείτε το τρέχον πρόγραμμα της συνδρομής σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση της συνδρομής σας ανά πάσα στιγμή.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Αποθήκευση Cloud

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)


☐ Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	

Ορισμός περιόδου	Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. • Όλα: Προβολή όλων των αρχείων. • Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.
Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρι. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να απελευθερώσετε χώρο.

Εγγραφή

Εάν είστε επί του παρόντος σε Τυπικό πρόγραμμα ή σε Premium πρόγραμμα με κωδικό εξαργύρωσης, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε συνδρομή Premium. Η πληρωμή ολοκληρώνεται μέσω της υπηρεσίας Stripe (www.stripe.com).

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή».

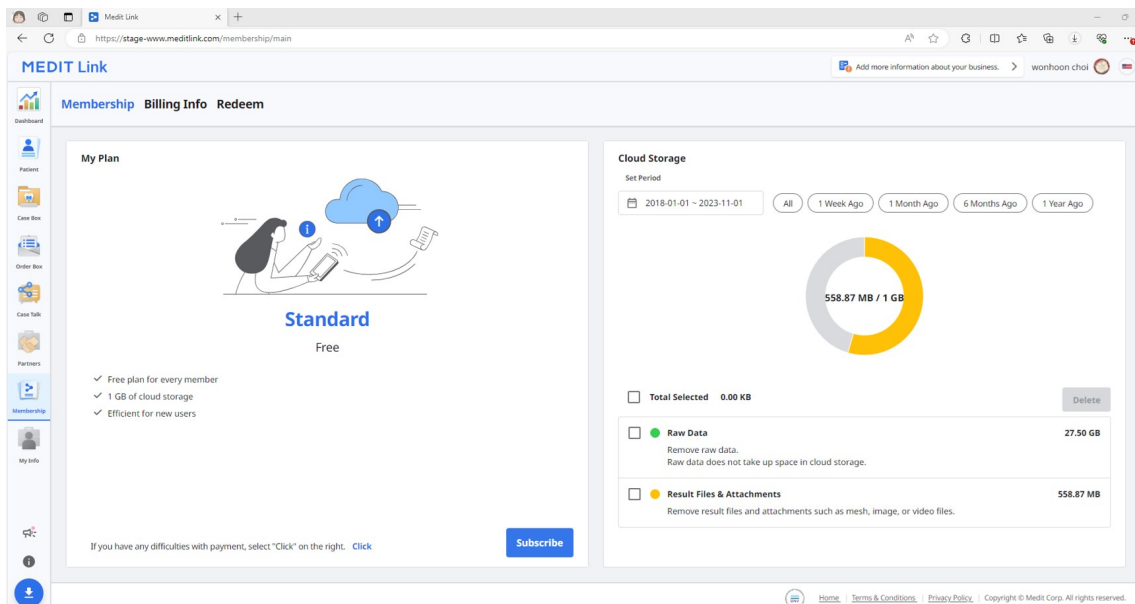

2. Ελέγξτε την περιγραφή του προγράμματος Premium και κάντε ξανά κλικ στην «Εγγραφή».

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. Ελέγξτε την τιμή και τους όρους και τις πληροφορίες εισαγωγής που απαιτούνται για την πληρωμή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Η πληρωμή μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί, θα δείτε το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close


Απεγγραφή

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Μετά την απεγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή Premium για τις υπόλοιπες ημέρες του συγκεκριμένου μήνα πληρωμής. Το πρόγραμμα σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

1. Κάντε κλικ στην «Απεγγραφή».

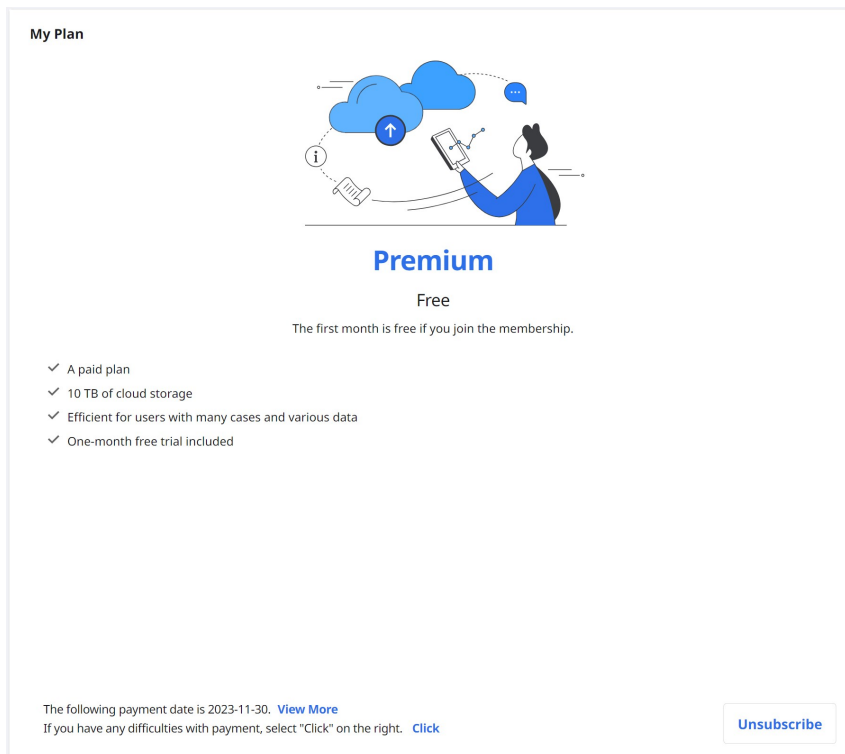

2. Κάντε κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής».

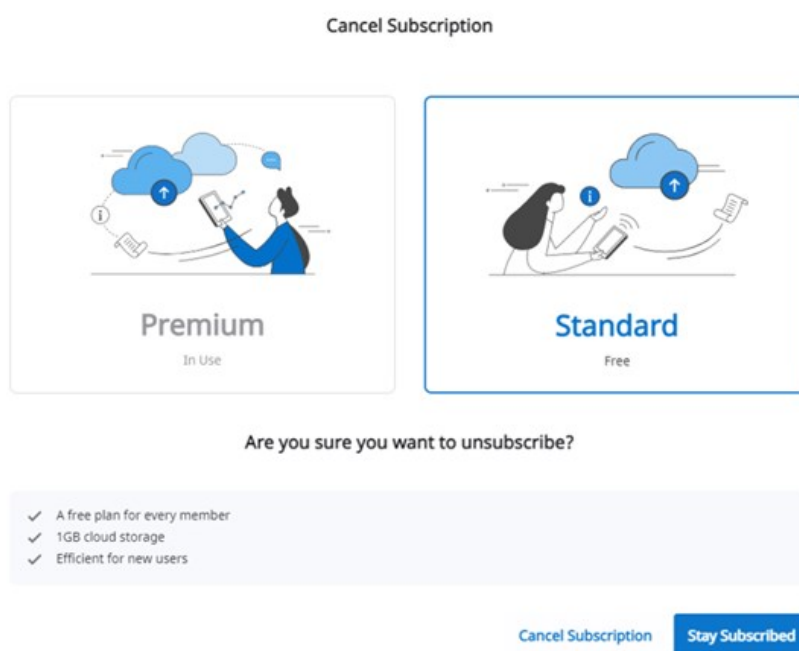

3. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απεγγραφείτε, κάντε ξανά κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής» στο νέο αναδυόμενο παράθυρο.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Η συνδρομή σας έχει ακυρωθεί.
5. Το πρόγραμμα σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Πληροφορίες χρέωσης

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό πληρωμών για τις εγγραφές μέλους, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμολογίου για κάθε πληρωμή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αλλάξετε την μέθοδο πληρωμής, η οποία θα εφαρμοστεί για την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία μεθόδου πληρωμής».

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99 USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa ****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Κάντε κλικ στην «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής».

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD


 **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάντε κλικ στην «Προσθήκη».

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. Η μέθοδος πληρωμής που προστέθηκε πρόσφατα θα οριστεί ως προεπιλεγμένη και θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη πληρωμή.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



+ Add payment method

Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού επέκτασης δίπλα στην μέθοδο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε στο παράθυρο διαλόγου χρέωσης.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day


Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

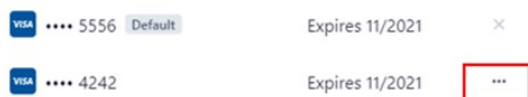

+ Add payment method

2. Κάντε κλικ στο «Ορισμός προεπιλογής» για να ορίσετε την επιλεγμένη κάρτα ως προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Εξαργύρωση

Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης που παρέχεται ως μέρος της προσφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Premium συνδρομή μαζί με τον κωδικό εξαργύρωσης.

Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης

1. Εισάγετε τον κωδικό εξαργύρωσης και κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

The screenshot shows the 'MEDIT Link' website with the 'Redeem' tab selected. The 'Register Redeem Code' section has a text input field for the 'Redeem Code' and a 'Register' button. Below this is a table titled 'My Redeem Code' with columns: Promotion, Code Number, Dealer Name, Registration Date, From, To, Status, and a 'Remove' button. The table contains one row with the following data:

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30	Wonhoon-TestRedeem	Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

At the bottom of the page, there is a footer with links for Home, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Διαβάστε την ειδοποίηση και επιλέξτε «Καταχώρηση» ή «Εφαρμογή» στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.
 - ο Καταχώρηση: Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό εξαργύρωσης αργότερα μετά την εγγραφή.
 - ο Εφαρμογή: Καταχωρήστε και ενεργοποιήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Η έκπτωση της προσφοράς ισχύει άμεσα.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς κωδικούς εξαργύρωσης, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση» δίπλα στον κωδικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 - Εάν δεν υπάρχει κωδικός σε κατάσταση «Activated», αυτός που θα επιλέξετε θα εφαρμοστεί άμεσα.
 - Εάν υπάρχει κωδικός που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ο πρόσφατα επιλεγμένος κωδικός αλλάζει σε κατάσταση «Waiting». Όταν λήξει ο πρόσφατα ενεργοποιημένος κωδικός εξαργύρωσης, ο νέος κωδικός εξαργύρωσης σε κατάσταση «Waiting» θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση

Μόνο ένας κωδικός εξαργύρωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και μόνο ένας μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση «Waiting».

My Info

Ο λογαριασμός μου

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή και να ελέγξετε την κατάσταση της συνδρομής σας.

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)


Dashboard


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

Account Information



Email Address
wonhoon.choi@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)
Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name
wonhoon choi

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κλινική ή το εργαστήριό σας. Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς διαχειριστή.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Ο σαρωτής μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συνδεδεμένης συσκευής για τον λογαριασμό.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Add more information about your business. > seolah.jeon

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Άνοιγμα του μενού

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Πληροφορίες Medit

Μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Medit Academy, το Medit Academy YouTube και το Κέντρο βοήθειας Medit.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Λήψη εφαρμογής Medit Link

52

Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος εγκατάστασης από την ιστοσελίδα. Αυτό το μενού είναι χρήσιμο εάν χάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος ή εάν διαθέτετε ένα παλιό πρόγραμμα εγκατάστασης.

Σημείωση

Το Medit Link ενημερώνεται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε σύνδεση στο διαδίκτυο.

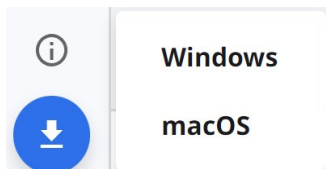

Επισκόπηση

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1.Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1.First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1.Alexa				0	2023-10-19	
1.Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1.Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1.Orange				0	2023-10-24	
1.Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Γραμμή τίτλου	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link >Γραμμή τίτλου για λεπτομερείς πληροφορίες.
2	Μενού	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link >Μενού για λεπτομερείς πληροφορίες.
3	Εργαλεία και λειτουργίες	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link >Πρόγραμμα προβολής αρχείων και Εφαρμογή Medit Link >Επιλογές προβολής για λεπτομερείς πληροφορίες.
4	Λίστα περιστατικών	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link >Φιλτράρισμα και αναζήτηση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.

Τύπος λογαριασμού		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Λογαριασμοί κλινικής	Διαχειριστής	O	O	O	X	X	O	O	O
	Μέλος	O	O	X	X	X	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O
Λογαριασμοί εργαστηρίου	Διαχειριστής	X	X	X	O	O	O	O	O
	Μέλος	X	X	X	X	O	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O

Γραμμή τίτλου

Η γραμμή τίτλου παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως πληροφορίες λογαριασμού, ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, ρυθμίσεις και κατάσταση δικτύου.



Οι Πληροφορίες μου

Οι πληροφορίες μου περιέχουν βασικές πληροφορίες χρήστη, όπως εικόνα προφίλ, όνομα κλινικής ή εργαστηρίου, διεύθυνση email και όνομα χρήστη.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να δείτε ειδοποιήσεις που σχετίζονται με συνεργασίες, παραγγελίες και διαδικασίες εργασίας.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Επιλέξτε το πλαίσιο ώστε να εμφανίσετε μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα. |
| 2 | Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για να μετακινηθείτε αμέσως στο σχετικό περιστατικό ή την ιστοσελίδα. |

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Ρυθμίσεις

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το πρόγραμμα.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Ανατρέξτε στο [Εφαρμογή Medit Link > Ρυθμίσεις](#) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων.

Κατάσταση δικτύου

Το Medit Link σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες απρόσκοπτα βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Για να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης του διαδικτύου σας σε πραγματικό χρόνο, το εικονίδιο κατάστασης διαδικτύου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι καλή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τους ακόλουθους περιορισμούς:

- Ορισμένες λειτουργίες θα γίνουν περιορισμένες, όπως η παραγγελία ενός περιστατικού, η δημιουργία περιστατικού, η κοινοποίηση μέσω Case Talk και ο συγχρονισμός στο cloud.
- Η συνολική απόδοση της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί λόγω των επιπτώσεων του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισέλθετε στη Λειτουργία εκτός σύνδεσης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μόλις συνδεθείτε.

Σημείωση

Το σύμβολο διαδικτύου υποδεικνύει την ταχύτητα απόκρισης μεταξύ της τρέχουσας περιοχής και του AWS (Amazon Web Service). Δεν ορίζει την ταχύτητα του διαδικτύου σας, επομένως ορισμένες φορές μπορεί να εμφανίζει την κατάσταση ως αδύναμη ή κακή, παρόλο που η ταχύτητα του διαδικτύου σας είναι αρκετά γρήγορη.

Εάν η άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο, η ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται ως αδύναμη ή κακή και η συνολική απόδοση του Medit Link μπορεί να είναι κακή. Σε αυτήν την περίπτωση, μην κάνετε κοινοποίηση του διαδικτύου σε άλλες διεργασίες.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα «Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων» αποτελεί τεράστιο μέρος της διαδικασίας του διαδικτύου. Εάν το σύμβολο εμφανίζει αδύναμη ή κακή κατάσταση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις >Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων και απενεργοποιήστε την «Αυτόματη μεταφόρτωση».

Ρυθμίσεις

Γενικά

Παρέχει επιλογές για τη συνολική ρύθμιση του συστήματος.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links: General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is titled 'General' and includes the following settings:

- Save Folder:** C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/
- Language Settings:** English (dropdown menu)
- Teeth Labeling:** FDI (selected radio button), US (radio button)
- Notification:** Allow Notifications (checked checkbox)
- Upload Raw Data:** Upload Automatically (checked checkbox)
- Quick Scan:** Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information. Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan (unchecked checkbox)
- Viewing Options:** Advanced Rendering (checked checkbox), Adjust Color Texture (slider)
- Medit User Experience Improvement Program:** We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

At the bottom right of the settings area is an 'Apply' button. At the bottom right of the entire window is a 'Close' button.

Αποθήκευση φακέλου	Καθορίστε έναν φάκελο για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων δεδομένων που δημιουργούνται από το Medit Link και τα συνδεδεμένα με αυτό προγράμματα.	
Ρυθμίσεις γλώσσας	Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα.	
Αρίθμηση δοντιών	Επιλέξτε ένα σύστημα αρίθμησης δοντιών μεταξύ του FDI και των ΗΠΑ.	
Ειδοποιήσεις	Όταν είναι επιλεγμένο, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις προγράμματος.	
Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων	Όταν είναι επιλεγμένο, τα ακατέργαστα δεδομένα μεταφορτώνονται αυτόματα στο cloud. Βοηθά στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχικών δεδομένων και την απρόσκοπτη σάρωση όταν χρησιμοποιείτε το Medit Link με τον ίδιο λογαριασμό από άλλον υπολογιστή. Το αρχικό αντίγραφο ασφαλείας στο cloud ισχύει μόνο για δεδομένα που αποκτήθηκαν από το Medit Scan for Clinics.	
Γρήγορη σάρωση	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα τα παρακάτω στάδια σάρωσης στο Medit Scan for Clinics χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις πληροφορίες της φόρμας. • Προεπεμβατικά άνω γνάθου • Προεπεμβατικά κάτω γνάθου • Σάρωση προσώπου	
	Προηγμένη απόδοση	Όταν είναι επιλεγμένο, το 3D μοντέλο εμφανίζεται σε πιο ζωντανή και ρεαλιστική απόδοση.


Επιλογές προβολής	Ρυθμίστε την υφή του χρώματος	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του 3D μοντέλου. * Τα χρώματα που προκύπτουν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το Medit Link όταν κάνετε άνοιγμα των ίδιων δεδομένων από άλλο λογισμικό.
Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρήστη της Medit	Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη της Medit. - Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. - Δεν συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.	
Προεπιλεγμένη σελίδα μετά τη σύνδεση	Επιλέξτε το προεπιλεγμένο μενού που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος. - Οι λογαριασμοί κλινικής μπορούν να επιλέξουν μεταξύ Patient και Case Box - Οι λογαριασμοί εργαστηρίου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ In Box και Work Box	

Διαχείριση αποθήκευσης

Ελέγξτε και διαχειριστείτε τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο και αυτόν του cloud.

Settings
General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option

Storage Management
Set Period
1/1/2018–11/13/2023
All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Months Ago 1 Year Ago

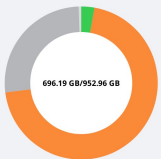
Local PC Storage


☐ Total Selected 0.00 KB Delete

☐ **Raw Data** 26.89 GB
Remove raw data created when using scan programs.

☐ **Result Files & Attachments** 2.54 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

☐ **Others** 666.76 GB
It shows space used by other programs.

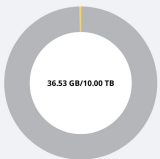Cloud Storage


☐ Total Selected 0.00 KB Delete

☐ **Raw Data** 837.95 GB
Remove raw data created when using scan programs. Raw data are not counted in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 36.53 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

Close

Ορισμός περιόδου

Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου.

- Όλα: Προβολή όλων των αρχείων.
- Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.

Τοπικός αποθηκευτικός χώρος

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή.

Ακατέργαστα δεδομένα	Αφαιρέστε τα επιλεγμένα ακατέργαστα δεδομένα από τον υπολογιστή. Εάν τα ακατέργαστα δεδομένα έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Καταργήστε τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων από τον υπολογιστή, όπως πλέγμα, εικόνες και βίντεο. Εάν αυτά τα αρχεία έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
Υπόλοιπα	Δείτε τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος και άλλων προγραμμάτων. Εμφανίζει την αποθηκευτική δυνατότητα του υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα αρχεία από το Medit Link.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον υπολογιστή.


Αποθήκευση Cloud

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του cloud.

Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρι. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς κ.λπ.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Αγορά αποθηκευτικού χώρου	Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε Τυπικό πρόγραμμα, κάντε εγγραφή σε Premium για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό σας χώρο στο cloud.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να ελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος

Διαχειριστείτε τα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση σε Medit Link.

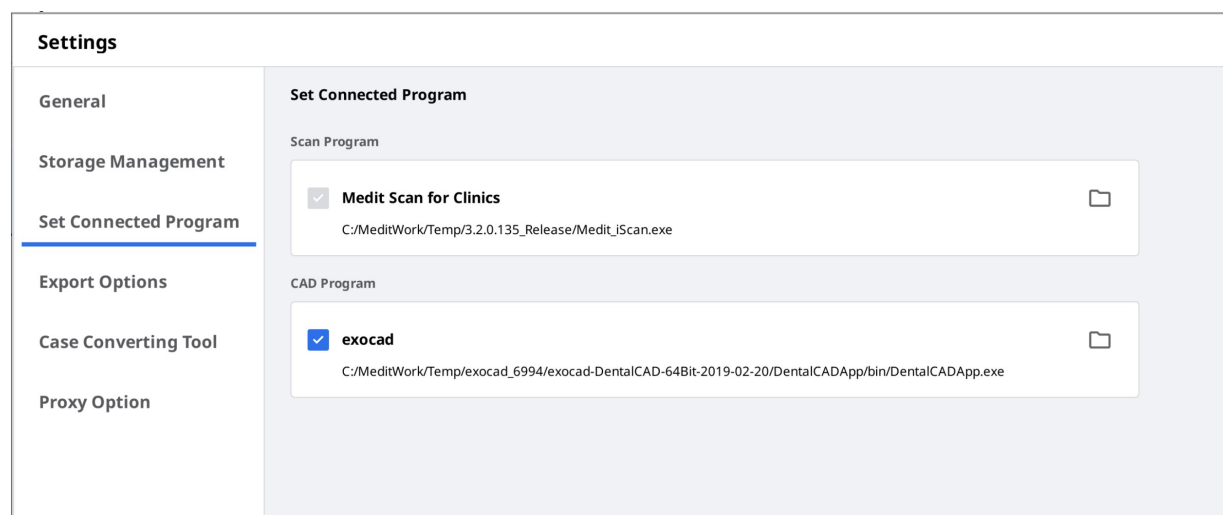

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα προγράμματα:

	Λογαριασμός κλινικής	Λογαριασμός εργαστηρίου
--	----------------------	-------------------------

Πρόγραμμα σάρωσης	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Πρόγραμμα CAD	exocad	exocad

Σημείωση

Η ενσωμάτωση των ακόλουθων υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμη σε Medit Link για Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)
- [exocad](#)

Επιλογές εξαγωγής

Ορίστε τον τρόπο εξαγωγής αρχείων από το Medit Link.

Settings
General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide

Export Options
Type
exocad
Export Files To
D:/YHGarn_Test/
Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files
Image Format
☒ Convert images to the below format
☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP
Compress & Combine
☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh
Options when same folder or file already exists.
☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name
☒ Case Creation Date ☐ Scanned Date ☐ Order Date
☒ Patient Name ☐ Case Name ☐ Partner Name
☐ Patient ID ☐ Order ID
Folder Name
Case Creation Date - Patient Name
Rule for File Name
☒ Case Creation Date ☐ Scanned Date ☐ Order Date
☒ Patient Name ☐ Case Name ☐ Partner Name
☐ Patient ID ☐ Order ID
File Name
Case Creation Date - Patient Name
Apply
Close

Τύπος CAD	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θα προσαρμόσει τα αποτελέσματα με βάση την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του τελικού αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση & Συνδυασμός	Συμπίεση αρχείων: Κάντε συμπίεση όλων των αποτελεσμάτων σε ένα μόνο αρχείο. Συνδυασμός μεμονωμένων αρχείων: Συνδυάστε όλα τα αποτελέσματα για την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο σε ένα αρχείο. Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα προγράμματα που δεν μπορούν να εισάγουν και να λειτουργήσουν με πολλά αρχεία, μπορείτε να τα συγχωνεύσετε σε ένα ώστε να λειτουργούν με αυτά τα προγράμματα.

Επιλογές όταν προυπάρχει ίδιος φάκελος ή αρχείο.	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ενέργεια για περιστατικά όπου ο ίδιος φάκελος ή το όνομα αρχείου υπάρχει στη διαδρομή προορισμού. • Ερώτηση πάντα κατά την εξαγωγή. • Εξαγωγή νέου αρχείου και αντικατάσταση των υπαρχόντων αρχείων. Το αρχείο που είναι αποθηκευμένο τη δεδομένη στιγμή θα χαθεί. • Δημιουργήστε ένα φάκελο και εξαγάγετε τα αρχεία
Κανόνες για ονομασία φακέλου	Καθορίστε κανόνες για τη δημιουργία ονομασιών φακέλου κατά την εξαγωγή αρχείων. Οι καθορισμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε ονομασίες φακέλων και το εξαγόμενο αρχείο θα αποθηκευτεί στον δημιουργημένο φάκελο. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας
Κανόνες για ονομασία αρχείου	Ορίστε κανόνες για το όνομα του αρχείου που θα εξαχθεί. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας

Εργαλείο μετατροπής περιστατικών

Μπορείτε να μετακινήσετε περιστατικά μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών εξάγοντας υπάρχοντα περιστατικά του λογαριασμού ή εισάγοντας περιστατικά που εξάγονται από άλλους λογαριασμούς.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영환/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

Εξαγωγή περιστατικού

Εξαγωγή περιστατικών του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού του τοπικού υπολογιστή.

1. Ανοίξετε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Patient

Total Patients: 3500

All

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

+ New Patient

+ New Case

View Options

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023

All

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영환/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. Στην ενότητα Εξαγωγή, ορίστε μια περίοδο ή αναζητήστε περιστατικά προς εξαγωγή, εάν είναι απαραίτητο.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name

☒ Contains
☐ Equals

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ TEST111의 케이스		
☐ TEST111's Case		
☐ Medit Ortho Simulation		

4. Επιλέξτε περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε από τη λίστα στην ενότητα «Αρχεία προς εξαγωγή».

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Ορίστε το όνομα του αρχείου επεξεργάζοντας το όνομα του περιστατικού στο πεδίο Όνομα αρχείου.
6. Ορίστε το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των επιλεγμένων περιστατικών.
7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου πραγματοποιείται η εξαγωγή του αρχείου.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Τα εξαγόμενα περιστατικά αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου .meditex.

Εισαγωγή περιστατικού

1. Ανοίξτε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Total Patients: 3500

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_carries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. Στην ενότητα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας για το αρχείο .meditex που θέλετε να εισάγετε.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» και ελέγξτε τα αρχεία προς εισαγωγή στην παρακάτω λίστα.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Το εισαγόμενο περιστατικό θα εμφανιστεί επίσης στο Case Box (λογαριασμός κλινικής) ή στο Work Box (λογαριασμός εργαστηρίου).

Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης

Σε ορισμένα περιορισμένα περιβάλλοντα διαδικτύου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαδικτύου.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Apply

About

User Guide

Close

Σχετικά

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το Medit Link.

About

MEDIT Link *Beta*

v 3.2.0 Build 107

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Οδηγός χρήστη

Κάντε λήψη του οδηγού χρήστη για το Medit Link.


Το άνοιγμα του οδηγού χρήστη απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

67

Μενού

Dashborad

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα – τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

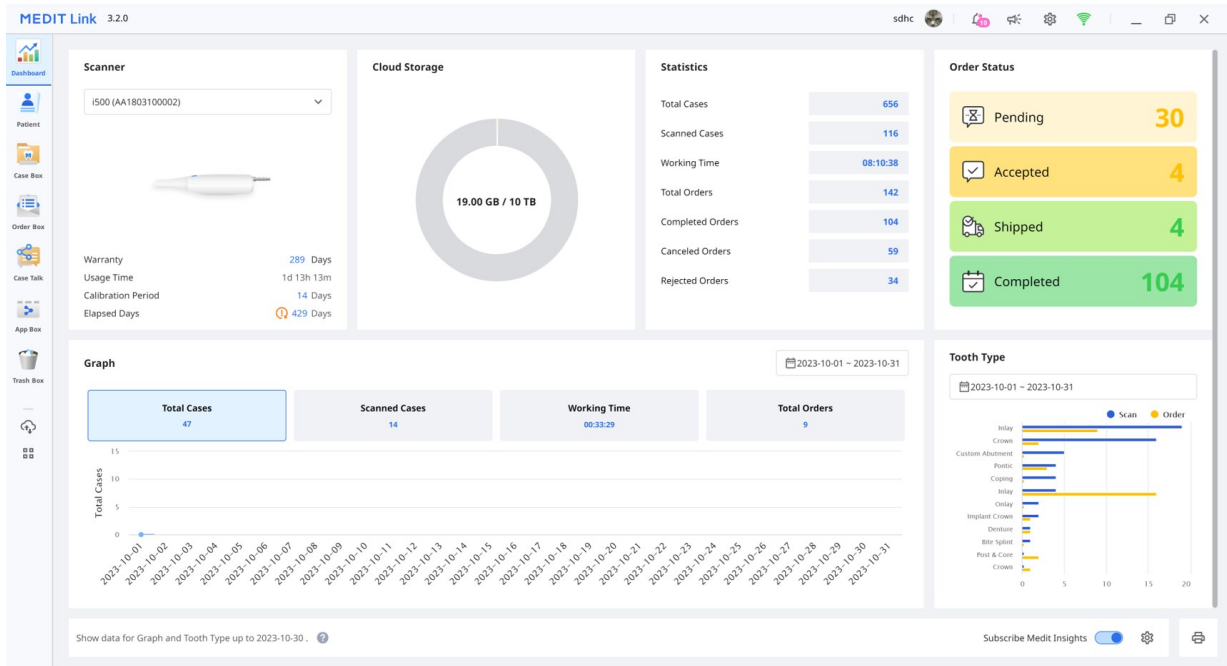


Σημείωση

Ανατρέξτε στην [Ιστοσελίδα Medit Link >Dashboard](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dashboard και το Medit Insights.

Patient


Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε ασθενείς στο μενού Patient.

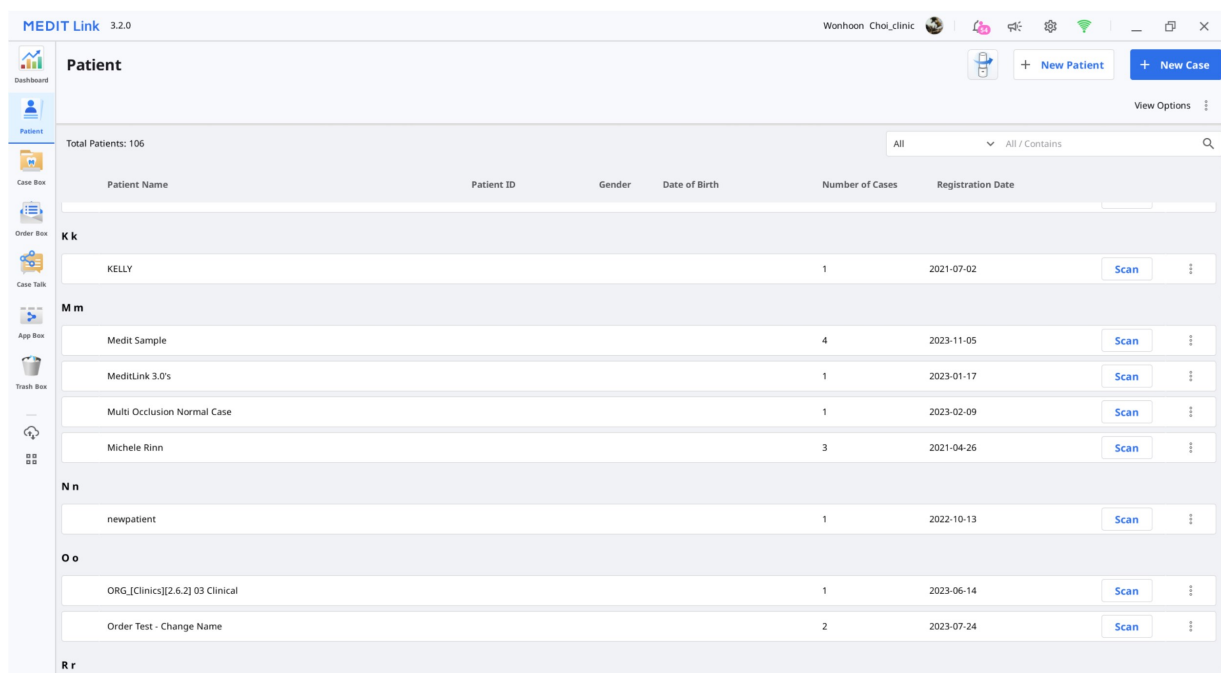

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Προσθήκη νέου ασθενή

1. Κάντε κλικ στο «Νέος ασθενής».

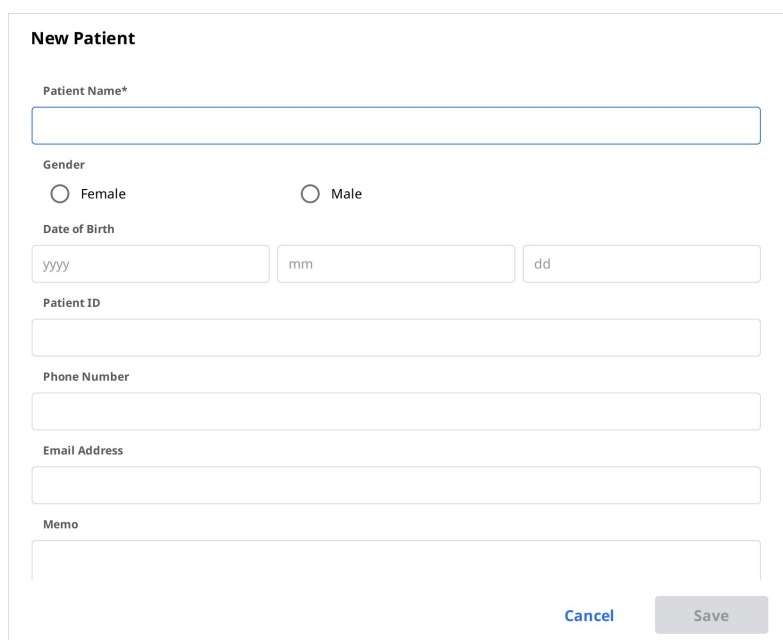

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Νέος ασθενής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Διαγραφή ασθενή

Σημείωση

Μπορείτε να διαγράψετε έναν ασθενή μόνο όταν δεν υπάρχουν περιστατικά για αυτόν.

1. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα.

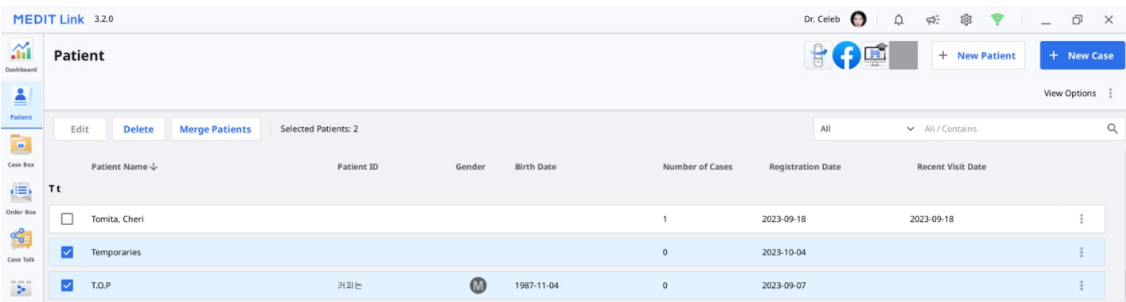


2. Κάντε κλικ στην «Διαγραφή».

Συγχώνευση ασθενών

Μπορείτε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά πολλών ασθενών για έναν ασθενή.

1. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα.

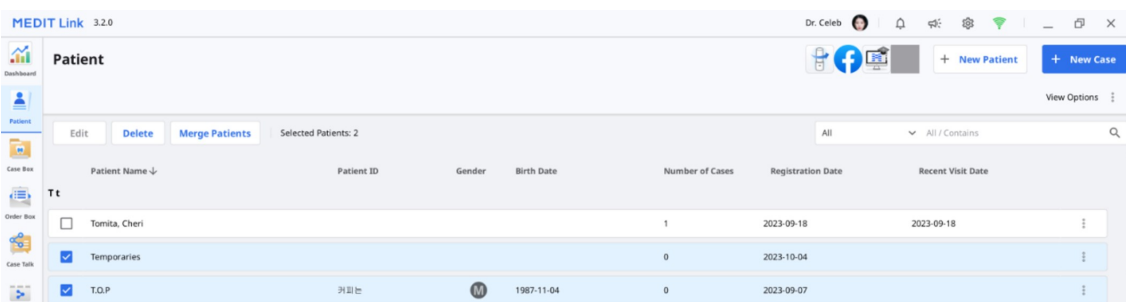

2. Κάντε κλικ στην «Συγχώνευση ασθενή».
3. Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο για τον οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά.
4. Όλα τα περιστατικά συγχωνεύονται στον ασθενή-στόχο και διατηρούνται οι πληροφορίες ασθενούς για τον ασθενή-στόχο.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel
Apply

5. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να προχωρήσετε στη συγχώνευση.

Case Box/Work Box

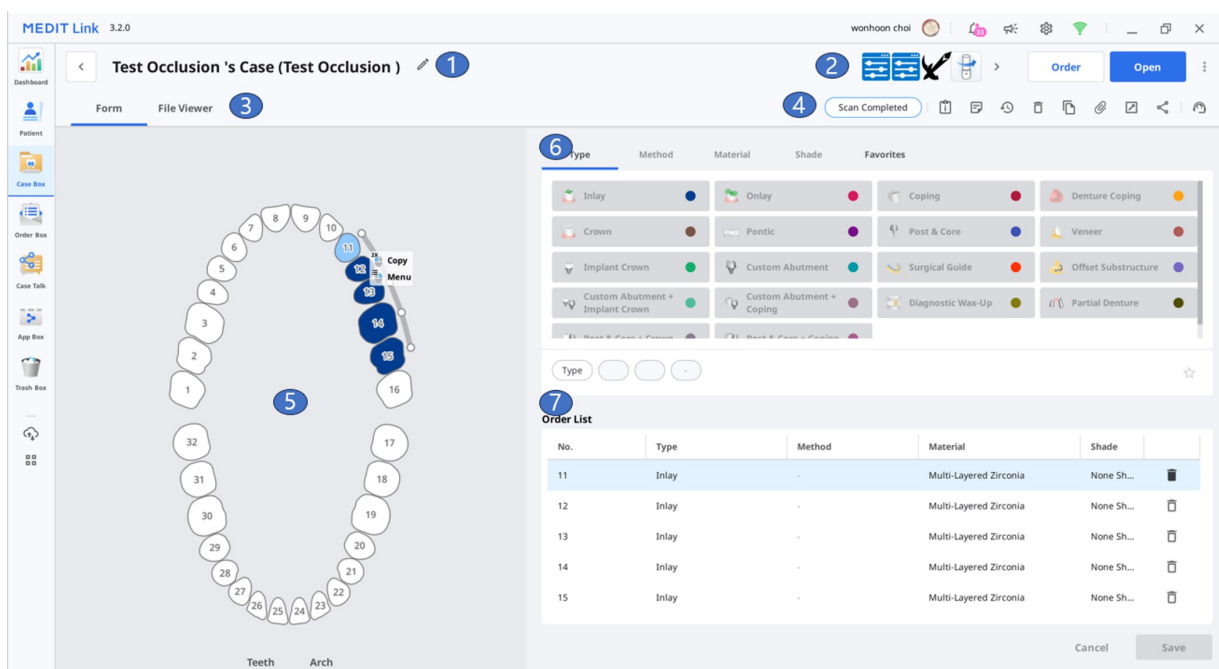

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε διαθέσιμες βασικές λειτουργίες: Παραγγελία/Σάρωση(Άνοιγμα)/Κουμπιά παραγγελίας και Εικονίδια εφαρμογών.
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Φόρμα, CAD και Πρόγραμμα προβολής αρχείων.
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων.
5	Εμφάνιση του UI για εγγραφή φόρμας στο επιλεγμένο πρόγραμμα CAD.
6	Παρέχετε τύπο/μέθοδο/υλικό/πληροφορίες απόχρωσης ώστε να γίνει επιλογή από τους χρήστες για τον επιλεγμένο αριθμό δοντιού.
7	Εμφανίστε τις πληροφορίες τύπου/μεθόδου/υλικού/πληροφοριών απόχρωσης που εφαρμόζονται στα επιλεγμένα δόντια.

Καρτέλες σε Case Box/Work Box

Φόρμα	CAD	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Η καρτέλα φόρμας παρέχει ένα UI για την εισαγωγή βασικών πληροφοριών για εργασίες σάρωσης, όπως τύπος, μέθοδος, υλικό για αριθμούς δοντιών και επιλογές σάρωσης. Οι πληροφορίες που εισάγετε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα σάρωσης και χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες παραγγελίας όταν κάνετε μια παραγγελία με τον συνεργάτη σας.	Η καρτέλα CAD παρέχει ένα UI για να ορίσετε επιλογές CAD. Οι πληροφορίες που ρυθμίσετε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα CAD.	Προβολή αρχείων αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από προγράμματα σάρωσης και CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Λειτουργίες σε Case Box/Work Box

Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφανίζει την κατάσταση του περιστατικού.
	Μετάβαση σε λεπτομέρειες	Παρέχει μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις & Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Ιστορικό περιστατικού	Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του περιστατικού. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Διαγραφή	Διαγραφή του περιστατικού. Δεν μπορείτε να διαγράψετε παραγγελθείσα περιστατικά ή περιστατικά που δημιουργήθηκαν εκτός σύνδεσης.
	Κλωνοποίηση	Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του τρέχοντος περιστατικού στο Case Box. Όλα τα δεδομένα θα αντιγραφούν στο κλωνοποιημένο περιστατικό. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αναπαραγωγή των πληροφοριών θεραπείας για τον ίδιο ασθενή ή στην πραγματοποίηση πρόσθετης παραγγελίας με τις ίδιες πληροφορίες ή αρχεία.
	Επισύναψη	Επισύναψη αρχείων σε διάφορες μορφές.
	Εξαγωγή	Εξαγωγή αρχείων σάρωσης ή αποτελεσμάτων CAD στον τοπικό υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή αρχείου που προτιμάτε κατά την εξαγωγή των αρχείων. Τα εξαγόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικό CAD και CAM για περαιτέρω εργασία.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινοποίηση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα. Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση του συνδέσμου ελεύθερα με οποιονδήποτε ή μόνο με συγκεκριμένα άτομα. Ένας κώδικας PIN ή μια ημερομηνία λήξης του συνδέσμου μπορεί να οριστεί για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
	Υποβολή αιτήματος υποστήριξης	Μεταβείτε σε μια σελίδα Κέντρου βοήθειας της Medit για να υποβάλετε το αίτημα υποστήριξης.

Order Box/In Box

- | | |
|---|---|
| 1 | Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς. |
| 2 | Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/ παραλαβή). |
| 3 | Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων |
| 4 | Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ. |
| 5 | Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες. |
| 6 | Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης. |

Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία, όπως αριθμός παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημειώσεις και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.


Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του Case Talk στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

Σημείωση

Η υπηρεσία Case Talk απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

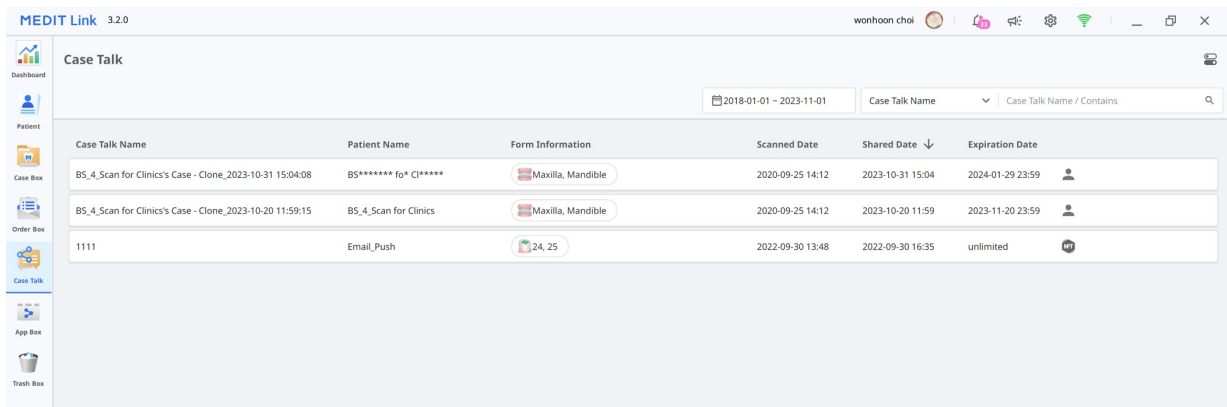

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** f* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited


Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

App Box

Το App Box παρέχει διάφορα πρόσθετα προγράμματα που συμπληρώνουν τη βασική ροή εργασιών σάρωσης και βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Το App Box αποτελείται από το «Medit Apps», που περιλαμβάνει πρωτότυπες εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί από τη Medit, και το «Partner Apps», το οποίο αποτελείται από εφαρμογές ενοποίησης με συνεργάτες της Medit από διαφορετικούς τομείς της ψηφιακής οδοντιατρικής, όπως η 3D εκτύπωση, το λογισμικό CAD/CAM κ.λπ.

Πραγματοποιήστε λήψη των διαθέσιμων εφαρμογών από την εφαρμογή Medit Apps και Partner Apps για να δημιουργήσετε οδοντιατρικές συσκευές, να αναλύσετε δεδομένα σάρωσης, για βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας διαβούλευσης ή να βελτιώσετε τη διαδικασία της εργασίας σας.

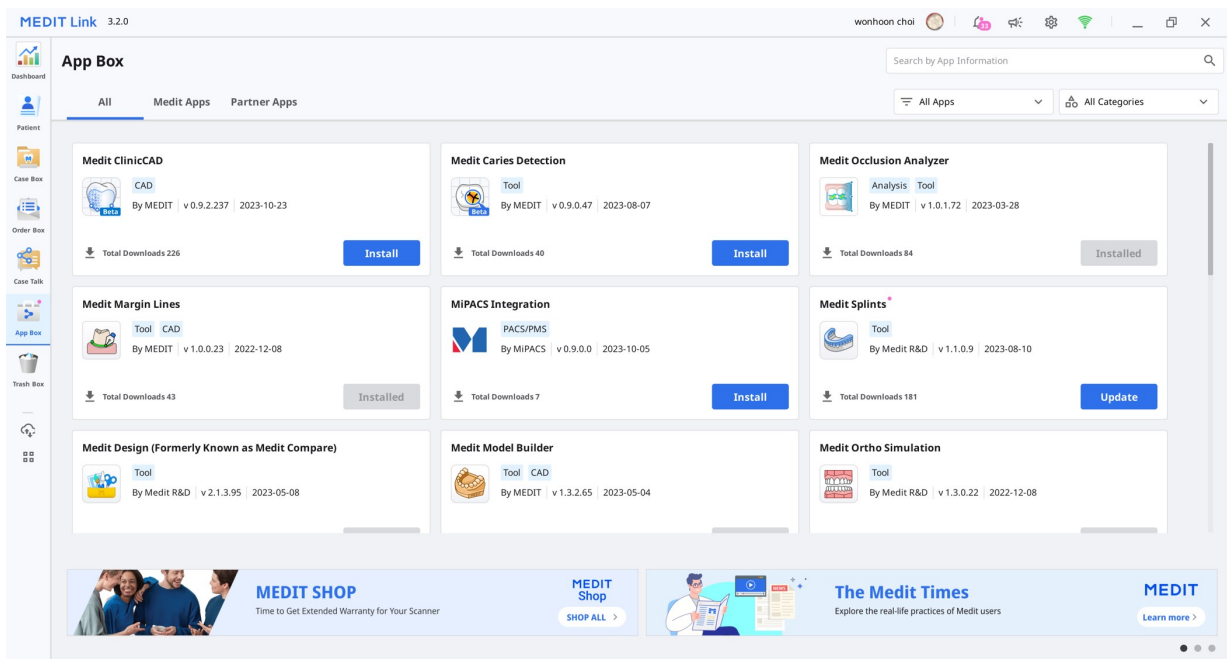

App Box

Search by App Information

All Apps | All Categories

Medit ClinicCAD CAD By MEDIT v 0.9.2.237 2023-10-23 Total Downloads 226 Install	Medit Caries Detection Tool By MEDIT v 0.9.0.47 2023-08-07 Total Downloads 40 Install	Medit Occlusion Analyzer Analysis Tool By MEDIT v 1.0.1.72 2023-03-28 Total Downloads 84 Installed
Medit Margin Lines Tool CAD By MEDIT v 1.0.0.23 2022-12-08 Total Downloads 43 Installed	MIPACS Integration PACS/PMS By MIPACS v 0.9.0.0 2023-10-05 Total Downloads 7 Install	Medit Splints Tool By Medit R&D v 1.1.0.9 2023-08-10 Total Downloads 181 Update
Medit Design (Formerly Known as Medit Compare) Tool By Medit R&D v 2.1.3.95 2023-05-08 Install	Medit Model Builder Tool CAD By MEDIT v 1.3.2.65 2023-05-04 Install	Medit Ortho Simulation Tool By Medit R&D v 1.3.0.22 2022-12-08 Install

MEDIT SHOP
Time to Get Extended Warranty for Your Scanner
SHOP ALL

The Medit Times
Explore the real-life practices of Medit users
Learn more

Trash Box

Το Trash Box αποθηκεύει προσωρινά τα διαγραμμένα περιστατικά. Οποιαδήποτε περιστατικό στο Trash Box μπορεί είτε να αποκατασταθεί είτε να διαγραφεί οριστικά.

⚠ Προσοχή

Τα δεδομένα που διαγράφονται από το Trash Box θα διαγραφούν οριστικά από τον υπολογιστή σας και τον διακομιστή και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

MEDIT Link 3.2.0wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All

▼

All / Contains

🔍

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών

Case Synchronization Manager

Upload Download

Total Count: 240 Cancel All Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case11111111111111111111111112131231231313123331111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 备份 - 备份 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να μεταφορτωθούν.
Μεταφόρτωση όλων	Μεταφόρτωση όλων των περιστατικών στο cloud.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων μεταφόρτωσης.
	Μεταφόρτωση περιστατικού στο cloud.
	Ακύρωση μεταφόρτωσης του περιστατικού.
	Επανάληψη μεταφόρτωσης περιστατικού.

Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να ληφθούν.
Λήψη όλων	Λήψη όλων των περιστατικών στον υπολογιστή.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων λήψης.
	Λήψη περιστατικού στον υπολογιστή.
	Ακύρωση λήψης του περιστατικού.




Επανάληψη λήψης περιστατικού.

Πληροφορίες Medit

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε μενού που είναι διαθέσιμα μόνο στην Ιστοσελίδα Medit Link, όπως οι [My Info](#), [Partners](#) και [Membership](#). Ανατρέξτε στο Medit Link > Ιστοσελίδα Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) και [My Info](#) για λεπτομερείς περιγραφές των μενού της Ιστοσελίδας Medit Link.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Medit, το Medit Shop, όπου μπορείτε να αγοράσετε εκτεταμένες εγγυήσεις για σαρωτές και άλλα προϊόντα της Medit, όπως σακίδια σαρωτή.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Κέντρο βοήθειας της Medit, το κανάλι Medit Academy στο YouTube και την διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Medit Academy.

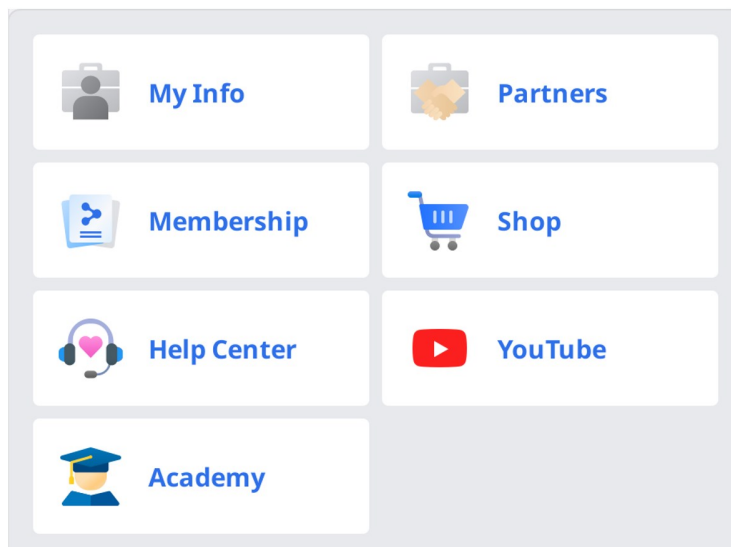

Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Το Πρόγραμμα προβολής αρχείων ομαδοποιεί και εμφανίζει διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν από προγράμματα που συνδέονται με το Medit Link και των δεδομένων που επισυνάπτονται από τους χρήστες.


Παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, ρύθμιση αδιαφάνειας και διαγραφή δεδομένων.

Υποστηρίζει προεπισκοπήσεις αρχείων στις ακόλουθες μορφές:

- 3D δεδομένα: STL, OBJ, PLY
- 2D εικόνες: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Αρχεία βίντεο: MKV, MP4, AVI, WMV

Δέντρο δεδομένων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα για το περιστατικό στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, να προσαρμόσετε τη διαφάνεια και να διαγράψετε δεδομένα από το δέντρο δεδομένων.




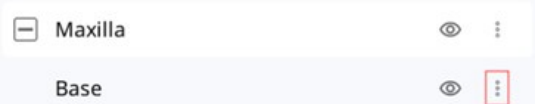
	Εμφάνιση/ Απόκρυψη	Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα δεδομένα.
	Αδιαφάνεια	Το ρυθμιστικό εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα δεδομένα στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των εμφανιζόμενων δεδομένων μετακινώντας το ρυθμιστικό. 
	Περισσότερα	Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα, εμφανίζονται πρόσθετες διαθέσιμες λειτουργίες.  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων αλλά εμφάνιση μόνο των αντίστοιχων δεδομένων. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των δεδομένων. • Αντιγραφή: Αντιγράψτε τα δεδομένα και προσθέστε τα στην ομάδα συνημμένων. • Εξαγωγή: Εξαγωγή των επιλεγμένων αρχείων. • Μετονομασία: Αλλαγή ονομασίας των δεδομένων. • Διαγραφή: Διαγραφή των δεδομένων.

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε μετονομασία δεδομένων όταν είστε συνδεδεμένοι.

Εργαλεία ελέγχου μοντέλου

3D έλεγχος μοντέλου

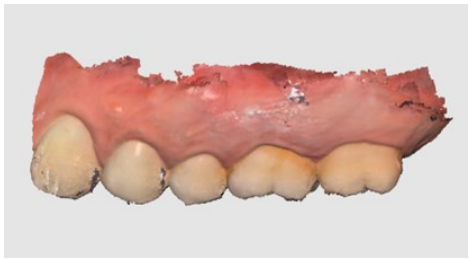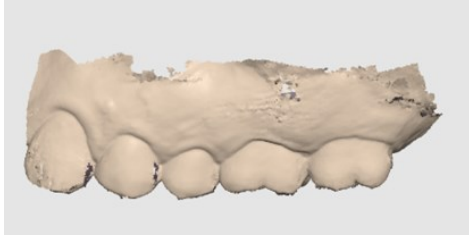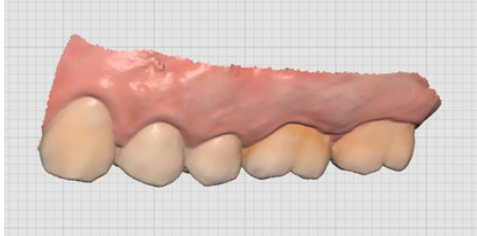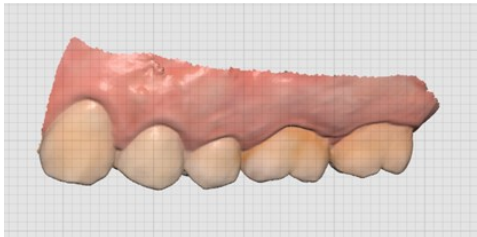	Μετακίνηση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίας εμφάνισης μοντέλου	Υφή ενεργοποιημένη Εμφάνιση δεδομένων με πραγματικά χρώματα υφής. 
		Υφή απενεργοποιημένη Εμφάνιση δεδομένων με ένα μόνο χρώμα. 
	Ρυθμίσεις πλέγματος (mm)	Πλέγμα ενεργοποιημένο Εμφάνιση του πλέγματος στο παρασκήνιο. 
		Επικάλυμμα ενεργοποιημένο Επικαλύψτε το μοντέλο με το πλέγμα. 
		Πλέγμα απενεργοποιημένο Απόκρυψη του πλέγματος.

Έλεγχος 2D εικόνας

	Επόμενη/Προηγούμενη εικόνα	Μετακίνηση μεταξύ εικόνων.
	Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την εικόνα.


	Λήψη/Επικόλληση παραθύρου	Μπορείτε να αποσπάσετε το παράθυρο της εικόνας και να το προσαρμόσετε στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου. Όταν το παράθυρο αποκατασταθεί στην αρχική του θέση, επιστρέφει στο προεπιλεγμένο του μέγεθος.
---	--------------------------------------	---

Εργαλεία λειτουργίας

Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις


Κάντε λήψη της τρέχουσας οθόνης ως 2D εικόνα, κάντε σχεδιασμό ή προσθέστε σημειώσεις.

Μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως αρχείο με τις σημειώσεις σας και να το στείλετε ως αναφορά.

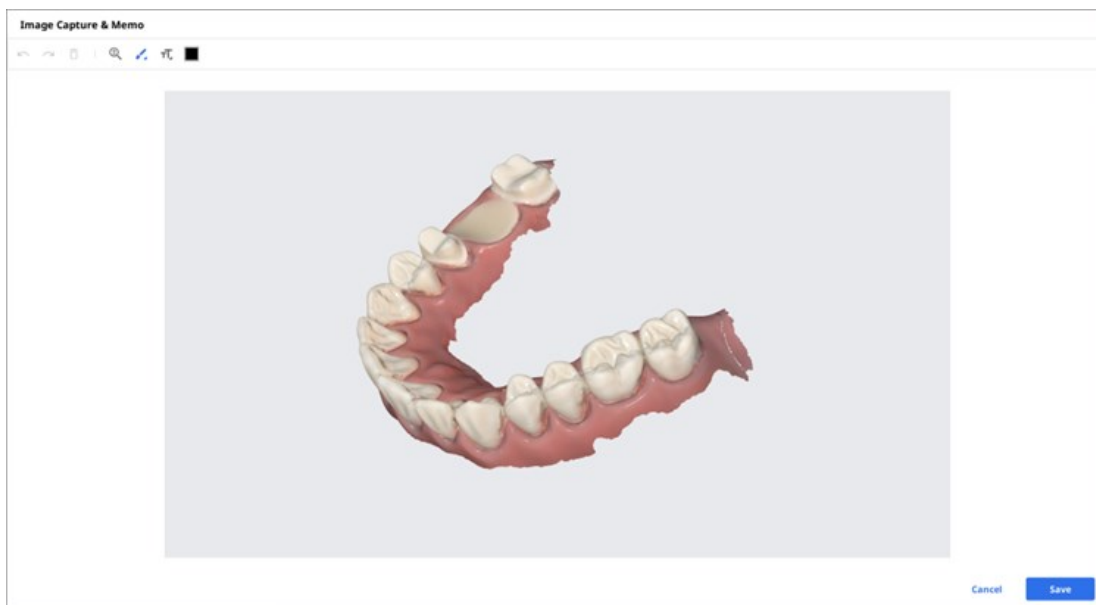


Ορθοδοντική προβολή

Κάντε λήψη των εικόνων στην τρέχουσα κατεύθυνση προβολής και πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά από την τρέχουσα κατεύθυνση προβολής.

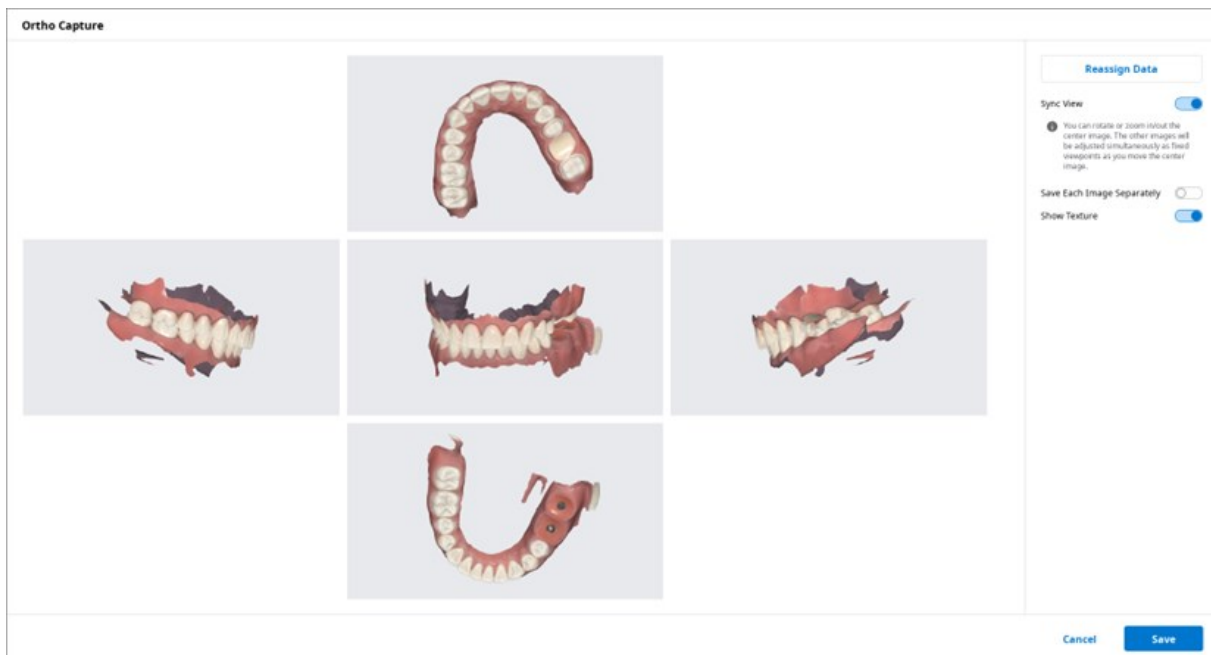

Προβολή συγχρονισμού	Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση της κεντρικής εικόνας. Οι άλλες εικόνες θα προσαρμοστούν ταυτόχρονα ως σταθερές οπτικές γωνίες καθώς μετακινείτε την κεντρική εικόνα. Όταν είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να μετακινήσετε, να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση όλων των εικόνων ξεχωριστά.
Αποθήκευση κάθε εικόνας ξεχωριστά	Αποθηκεύστε κάθε εικόνα σε υψηλή ανάλυση.
Εμφάνιση υφής	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την υφή για το μοντέλο.
Εκ νέου εκχώρηση δεδομένων	Αλλάξτε τα δεδομένα για την άνω γνάθο/γνάθο με τη λειτουργία Εκ νέου εκχώρησης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αλλαγμένα δεδομένα για δημιουργία και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες αποτελεσμάτων της Ορθοδοντική προβολής. • Δεδομένα σάρωσης: Τα δεδομένα σάρωσης για το περιστατικό εμφανίζονται όλα. • Άνω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την άνω γνάθο. • Κάτω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την κάτω γνάθο.


Η Περικοπή παρέχει διάφορα εργαλεία για την επεξεργασία δεδομένων.

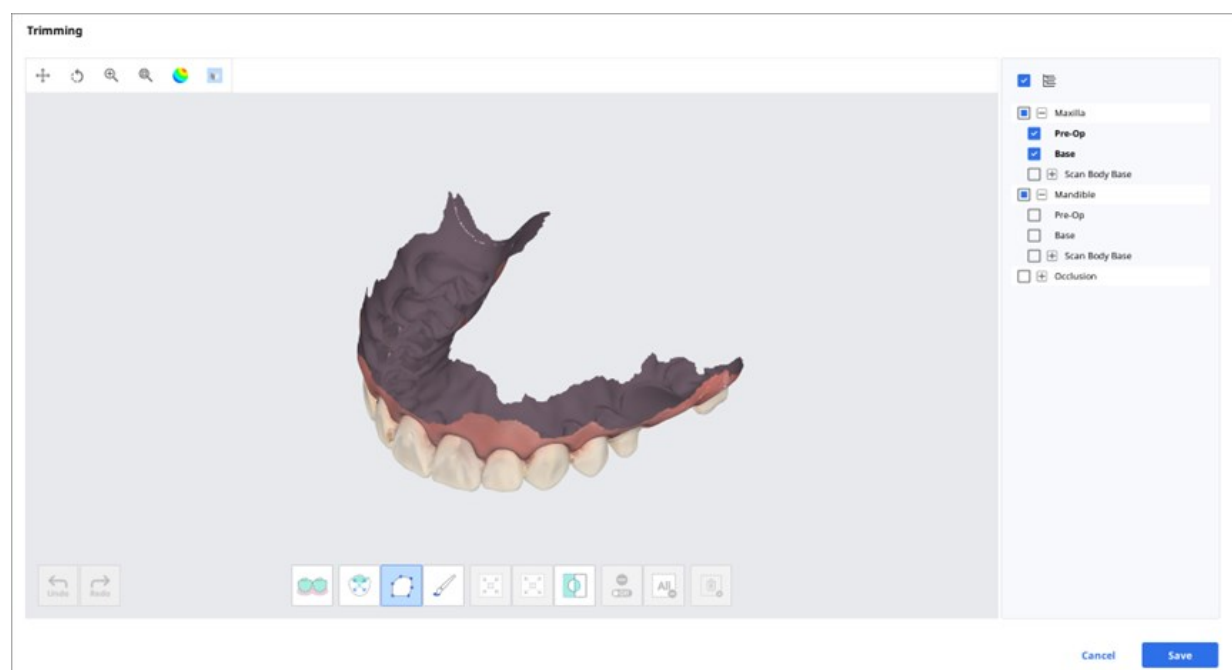

82

Επιλογή		Έξυπνη επιλογή δοντιών	Επιλέγει αυτόματα όλα τα δόντια του τόξου αφαιρώντας τα μέρη των ούλων. Σημείωση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τα δεδομένα σάρωσης που αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας το Medit Scan for Clinics με ενεργοποιημένη την επιλογή «Χρήση GPU».
		Έξυπνη επιλογή ενός δοντιού	Επιλέξτε αυτόματα την περιοχή ενός μόνο δοντιού με ένα κλικ. Μπορείτε να κάνετε κλικ ή σύρσιμο πάνω στο δόντι.
		Επιλογή πολυγραμμής	Επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη.
		Επιλογή βούρτσας	Επιλέξτε όλες τις οντότητες σε μια ελεύθερα σχεδιασμένη διαδρομή στην οθόνη. Θα επιλεγεί μόνο η μπροστινή όψη. Η βούρτσα διατίθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη.
Προσαρμογή επιλεγμένης περιοχής		Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής	Μειώνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Επέκταση επιλεγμένης περιοχής	Επεκτείνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής	Αντιστρέψτε την επιλογή.
Αποεπιλογή		Επιλογή/Αποεπιλογή	Όταν είναι ενεργοποιημένο, αποεπιλέξτε την περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
		Εκκαθάριση όλων των επιλογών	Διαγράφει όλες τις επιλεγμένες περιοχές.
		Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής	Διαγράψτε τα δεδομένα από την επιλεγμένη περιοχή.

1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε με τα εργαλεία επιλογής της περιοχής.

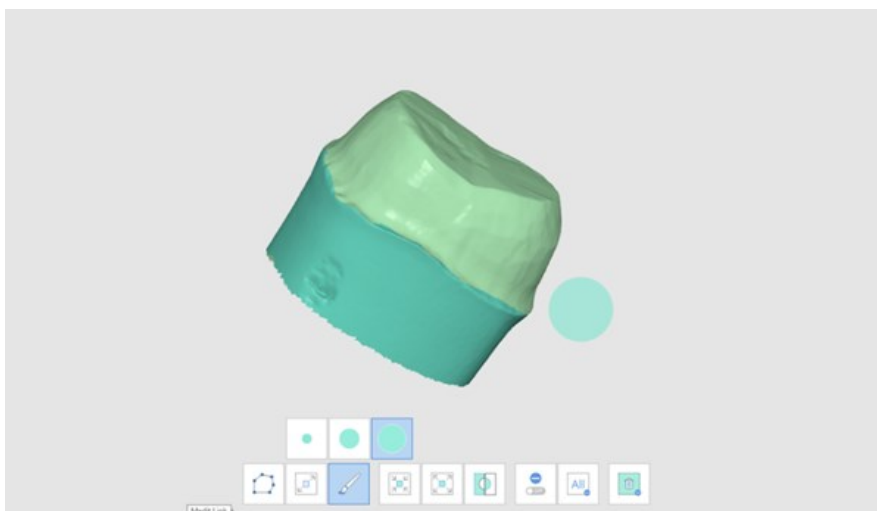


🔗 Σημείωση


Το εργαλείο περικοπής Πολυγραμμή επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη, ενώ το εργαλείο περικοπής Βούρτσα επιλέγει μόνο τα δεδομένα της μπροστινής όψης.

2. Μπορείτε να αντιστρέψετε, να συρρικνώσετε, ή να επεκτείνετε την επιλογή με τα ακόλουθα τρία εργαλεία.


- Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής

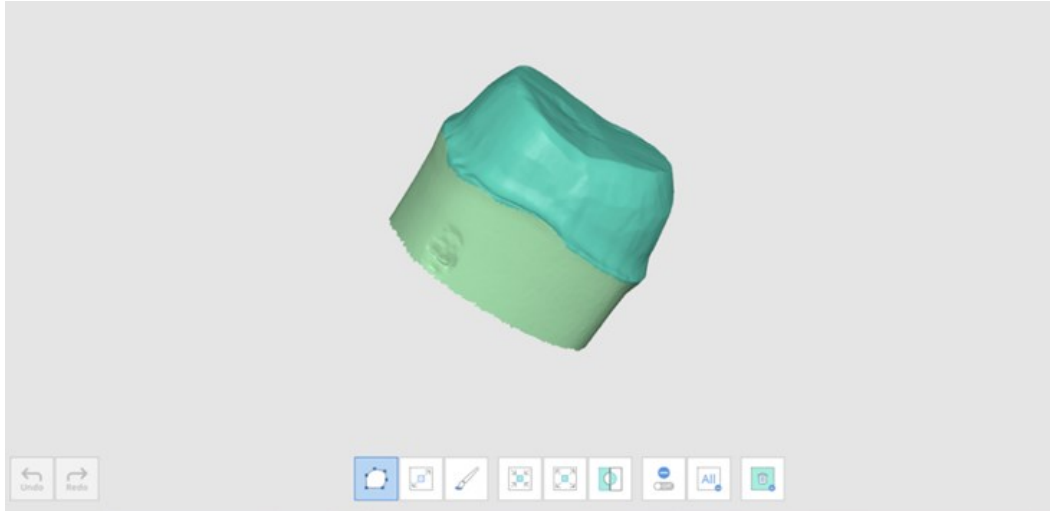

- Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής

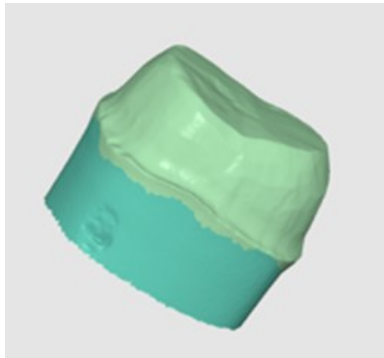

- Επέκταση επιλεγμένης περιοχής

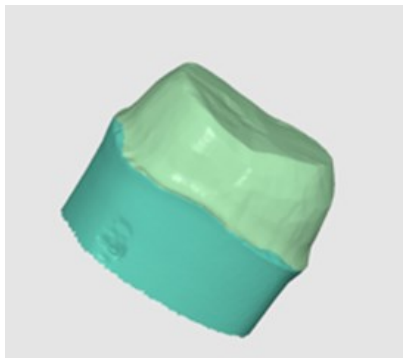

3. Μπορείτε να αποεπιλέξετε τις επιλεγμένες περιοχές με το εργαλείο Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής.



Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης

Βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης της σύγκλεισης. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα στόχου και να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση της σύγκλεισης.




Επίπεδο αντιστάθμισης

Χαμηλό		
Μεσαίο		

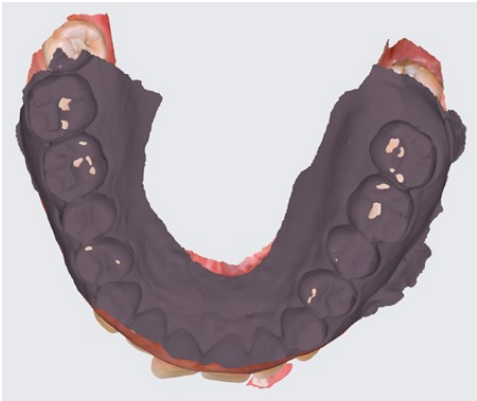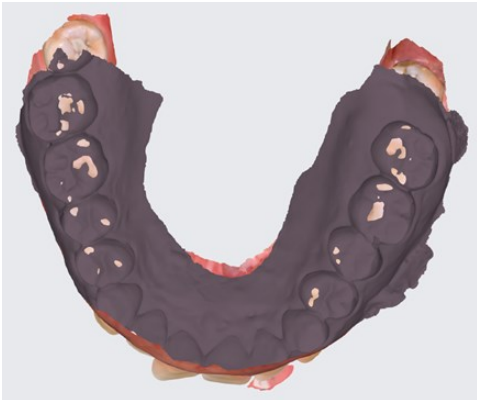Υψηλό	Compensation Level ☒	
Απενεργοποίηση	Compensation Level ☐	

Κίνηση της κάτω γνάθου

Μπορείτε να αναπαράγετε τις κινήσεις της κάτω γνάθου που έχουν καταγραφεί στο Medit Scan for Clinics για να δείτε τις δυναμικές συγκλεισιακές επαφές μεταξύ της άνω και της κάτω οδοντοστοιχίας.

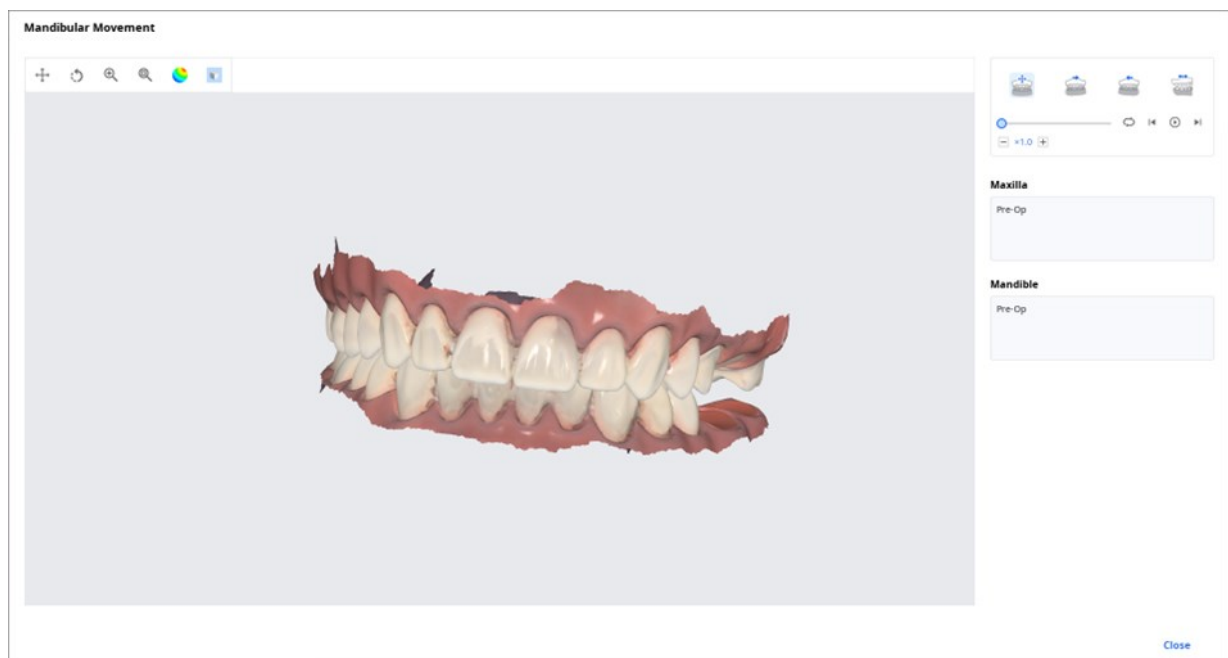

	Ελεύθερη κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της ελεύθερης κίνησης της κάτω γνάθου.
	Αριστερή πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα αριστερά.
	Δεξιά πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα δεξιά.

	Εμπρόσθια κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα εμπρός.
---	------------------	--

Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να λάβετε πολλαπλά αποτελέσματα δεδομένων σύγκλεισης από την εφαρμογή Σάρωσης της Medit.

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω του «Προγράμματος προβολής αρχείων».

Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα


Όταν ο χρήστης λαμβάνει πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από το Medit Scan for Clinics, το Medit Link παρέχει την επιλογή επιλογής αποτελέσματος.

Η λίστα των αποτελεσμάτων παρατίθεται ονομαστικά και μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Το επιλεγμένο μοντέλο θα εμφανίζεται στο «Δέντρο δεδομένων» και στην «Περιοχή εμφάνισης μοντέλου».



Μπορείτε να συρρικνώσετε τη λίστα και να αλλάξετε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τα εικονίδια με τα βέλη.

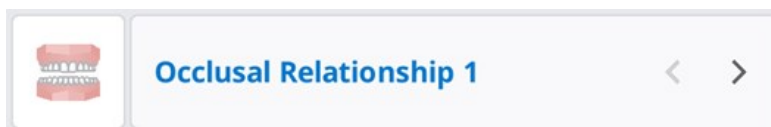

Επιλογές προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τις Επιλογές προβολής για να προσαρμόσετε τις διατάξεις της λίστας περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Φίλτρα κατάστασης

Εμφάνιση ή απόκρυψη κάθε φίλτρου που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του περιστατικού. Τα κρυφά φίλτρα κατάστασης δεν εμφανίζονται στην οθόνη στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε το περιστατικό που χρειάζεστε με τα φίλτρα κατάστασης.

- Μπορείτε να κάνετε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να προβάλετε για να εμφανίσετε περιστατικά μόνο σε αυτήν την κατάσταση.
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές φιλτραρίσματος:

Box	Φίλτρα κατάστασης
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Στοιχεία πίνακα

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στη λίστα περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων πίνακα ή να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης του πίνακα στην προβολή λίστας για βέλτιστη βελτιστοποίηση για το περιβάλλον χρήστη.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία πίνακα:

Box	Στοιχεία πίνακα
Patient	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Φύλο / Αρ. περιστατικών / Ημερομ. εγγραφής / Ημερομ. γέννησης

Case Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. γέννησης / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ.
In Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ. / Όνομα κλινικής
Work Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα κλινικής / Ημερομ. παραγγ.

Τύπος προβολής

Αλλάζετε τον τύπο προβολής μεταξύ της Προβολής συλλογής και της προβολής λίστας στο Case Box.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές τύπου προβολής:

Box	Επιλογές τύπου προβολής
Patient	Προβολή λίστας
Case Box	Προβολή λίστας / Προβολή συλλογής
Order Box	Προβολή λίστας
In Box	Προβολή λίστας
Work Box	Προβολή λίστας

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε μια επιλογή ομαδοποίησης για να ταξινομήσετε και να αναδιατάξετε τα περιστατικά στη λίστα με βάση την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ομαδοποίησης:

Box	Επιλογές ομαδοποίησης
Case Box	Κανένα / Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ.
Order Box	Κανένα / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
In Box	Κανένα / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
Work Box	Κανένα / Ζητ. ημερ. παράδ.

Σημείωση

Οι επιλογές ομαδοποίησης δεν είναι διαθέσιμες στα Patient, Case Talk και Trash Box.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης για να αλλάξετε τη σειρά των περιστατικών στη λίστα σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ταξινόμησης:

Box	Ομαδοποίηση	Επιλογές ταξινόμησης
-----	-------------	----------------------

Patient	-	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Ημερομ. γέννησης / Ημερομ. εγγραφής / Αρ. περιστατικών
Case Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
	Όνομα ασθενή	Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου
In Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα κλινικής
Work Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Όνομα κλινικής


Σημείωση

Οι επιλογές ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμες στα Case Talk και Trash Box.

Φιλτράρισμα και αναζήτηση

Φιλτράρισμα κατά ασθενή

Κάντε φιλτράρισμα και προβολή περιστατικών με βάση το όνομα του ασθενούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα φιλτράροντας μόνο τους ασθενείς στους οποίους πρόκειται να εργαστείτε.

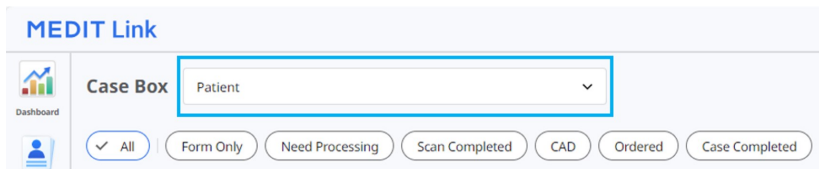


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενή.

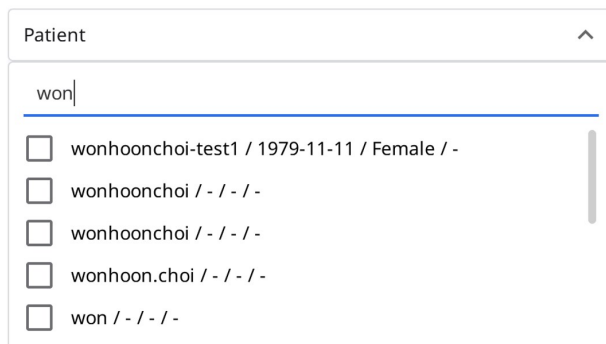


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Επιλέξτε τους ασθενείς μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης παρακάτω.

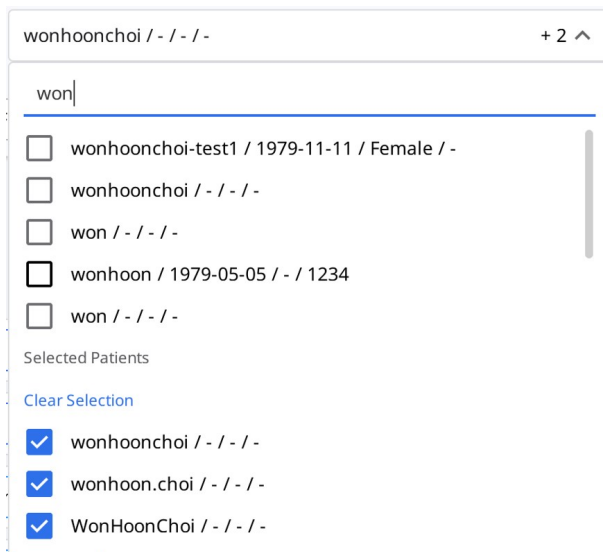

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. μόνο τα περιστατικά των επιλεγμένων ασθενών εμφανίζονται στη λίστα.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - +2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 08:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 08:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 08:14	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 02:05	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 03:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 04:41	2023-02-09 08:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 08:13	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 11:27	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplercase	-	2023-02-10 07:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 09:26	2023-02-09 09:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 08:50	2023-02-09 08:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 08:30	2022-10-11 05:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 08:28			

Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία

Φιλτράρισμα και εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά εντός της καθορισμένης διάρκειας.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Επιλέξτε τη διάρκεια από τη λίστα.

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία χθες.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.
- Τον προηγούμενο μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε.

All Search / Contains

Τα ακόλουθα Κριτήρια αναζήτησης είναι διαθέσιμα για κάθε box:

Patient	Όλα, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς
---------	----------------------------------

Case Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς, Πληροφορίες φόρμας, Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, ID Παραγγελίας
In Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Work Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Πληροφορίες Φόρμας, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Case Talk	Όνομα Case Talk (Περιλαμβάνει), Όνομα ασθενούς (Ισούται)
Trash Box (Κλινική)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, Διαγράφηκε από
Trash Box (Εργαστήριο)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, Διαγράφηκε από

Μπορείτε να επιλέξετε τα Κριτήρια αναζήτησης και να διαλέξετε μεταξύ της λογικής του Περιλαμβάνει και του Ισούται.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού

Δημιουργία περιστατικών

Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Εισάγετε βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα του ασθενούς και το όνομα του περιστατικού.
 - ο Εάν εισάγετε ένα όνομα που δεν βρίσκεται στη λίστα ασθενών, θα προστεθεί ένας νέος ασθενής.
 - ο Εάν εισάγετε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα ασθενών, μπορείτε να το επιλέξετε από τη λίστα.
 - ο Εάν καταχωρείτε ένα περιστατικό για έναν υπάρχοντα ασθενή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λίστα ασθενών για να επιλέξετε έναν υπάρχοντα ασθενή.



Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medi Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worshon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
4. Κάντε κλικ στο «Καταχώρηση και σάρωση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του περιστατικού και προχωρήστε στη σάρωση.
 - Καταχώριση : Θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια σελίδα. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την καταχώριση πολλαπλών περιστατικών.
 - Καταχώρηση και σάρωση: Μεταβείτε στην καρτέλα Φόρμα για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες φόρμας για το περιστατικό.

Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Εισάγετε ή επιλέξτε το όνομα της κλινικής.
3. Εισάγετε το όνομα του περιστατικού και το όνομα του ασθενούς. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
4. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.
5. Μετά την καταχώριση του περιστατικού, θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική σελίδα.

Επεξεργασία περιστατικών

Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» για να αλλάξετε το όνομα του ασθενούς. Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία. Αντίθετα, μπορείτε να βρείτε ένα όνομα ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς από τη λίστα.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Ελέγξτε το όνομα του ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον.
4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε το κουμπί «Νέος ασθενής» .
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις καταχωρημένες πληροφορίες για τον ασθενή.
6. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των περιστατικών που ελήφθησαν μέσω της παραγγελίας στο In Box.

Κλωνοποίηση περιστατικών

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Θα σας γίνει ερώτηση για το τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να κλωνοποιήσετε στο νέο περιστατικό.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Επιλέξτε εάν θα γίνει αντιγραφή μόνο για πληροφορίες φόρμας ή όλα τα δεδομένα.
4. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Αντιγράψτε όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσετε ένα νέο περιστατικό.
3. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα

περιστατικού] – Κλωνοποίηση».


Διαγραφή περιστατικού

Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή».



2. Κάντε κλικ στο «OK» για να διαγράψετε το περιστατικό.

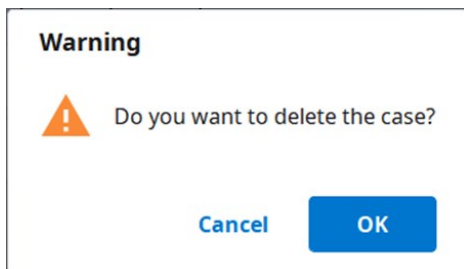

3. Τα διαγραμμένα περιστατικά μετακινούνται στο Trash Box και μπορούν να ανακτηθούν εάν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες φόρμας

Μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας με βάση το συνδεδεμένο πρόγραμμα και τον τύπο θεραπείας.

Οι πληροφορίες που εισάγετε θα χρησιμοποιηθούν ως βασικές πληροφορίες για την εργασία σε προγράμματα σάρωσης ή CAD και την παραγγελία.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε εάν πρόκειται να εισάγετε πληροφορίες θεραπείας κατά δόντια ή κατά γνάθο.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
3. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Εισαγωγή στην καρτέλα CAD

1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης: Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
2. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού/τη γνάθο/τον αριθμό καλουπιού.
3. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για λεπτομερείς επιλογές και λειτουργίες CAD.
4. Κάντε κλικ στο «OK» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
5. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα σάρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης: Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
3. Οι μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Δόντια	O	O
Γνάθος	O	O
Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση	X	O
Πολλαπλή χύτευση	X	O

4. Επιλέξτε τους αριθμούς δοντιών, γνάθου ή καλουπιού για τη διαδικασία σάρωσης.
5. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.


6. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Εισαγωγή στην καρτέλα CAD

1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης:
Δόντια/ Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
2. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού/τη γνάθο/τον αριθμό καλουπιού.
3. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για λεπτομερείς επιλογές και λειτουργίες CAD.
4. Κάντε κλικ στο «OK» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.
5. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση».

Σύνδεση δοντιών με γέφυρα

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά δόντια σε μια γέφυρα όταν γίνεται εφαρμογή του ίδιου υλικού σε πολλαπλά γειτονικά δόντια. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γέφυρας δίπλα στα επιλεγμένα δόντια για να τα συνδέσετε ή να τα αποσυνδέσετε.

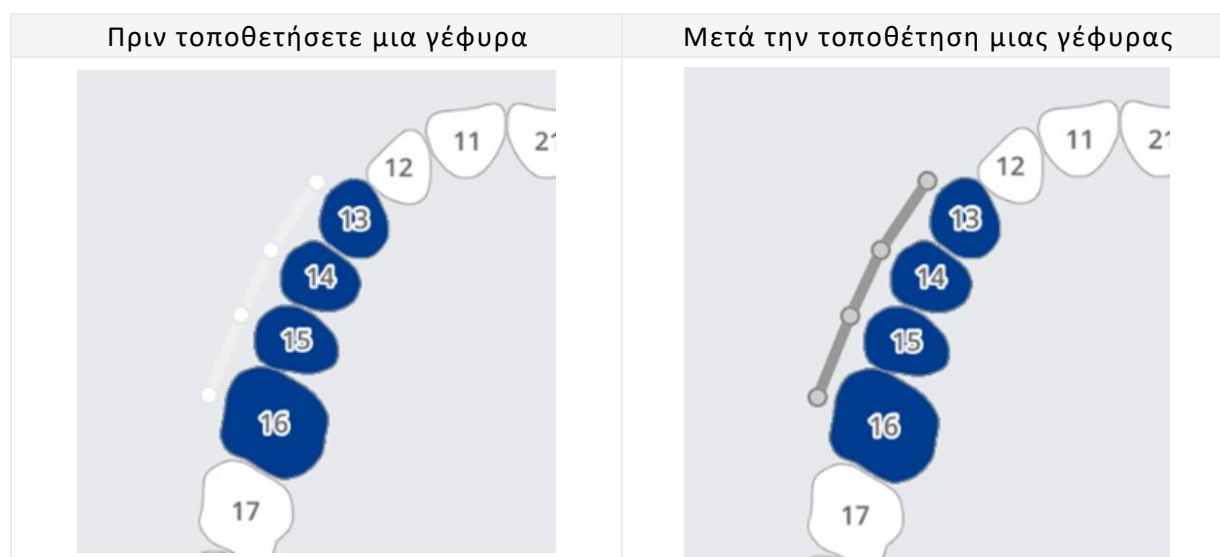

Ρύθμιση επιλογών σάρωσης

Ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο εργάζεστε, παρέχονται διάφορες επιλογές σάρωσης.

Οι επιλεγμένες επιλογές σάρωσης μεταβιβάζονται σε κάθε πρόγραμμα σάρωσης.

Medit Scan for Labs

Γενικές επιλογές

	Γειτονικό δόντι	Σημειώστε τα τροχισμένα και γειτονικά δόντια και μεταδώστε αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Ανταγωνιστής	Επισημαίνει αυτόματα τον ανταγωνιστή και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Αρθρωτήρας	Εμφάνιση επιλογών για την επιλογή του αρθρωτήρα στο πρόγραμμα σάρωσης.

	Δείκτης κίνησης	Επιτρέψτε τη χρήση της στρατηγικής σάρωσης «Κίνηση γνάθου» στο πρόγραμμα σάρωσης.
---	-----------------	---

Επιλογές κατά δόντια

	Αναλογικό	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση αναλογικών στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση προεπέμβασης	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση ενός προεπεμβατικού μοντέλου στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση διαγνωστικού κερώματος	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση κερωμάτων στο πρόγραμμα σάρωσης.

Προσθήκη στα αγαπημένα

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα ένα προϊόν καταχωρώντας το ως αγαπημένο.

Η διαχείριση της λίστας των καταχωρημένων αγαπημένων εφαρμόζεται ως πρότυπο και μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω των λειτουργιών εξαγωγής και εισαγωγής.

Προσθήκη στα αγαπημένα

1. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Τα Τύπος – Μέθοδος – Υλικό – Αποχρώσεις μπορούν να καταχωρηθούν ως αγαπημένα ακόμα και αν δεν έχουν επιλεγεί όλα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αστεριού».

4. Ένας συνδυασμός των επιλεγμένων παραμέτρων, εξαιρουμένου του αριθμού δοντιού, βρίσκεται στη λίστα αναζήτησης των αγαπημένων σας.

Διαχείριση αγαπημένων προτύπων

Μπορείτε να καταχωρήσετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε διαφορετικούς τύπους προτύπων.

Προσθήκη	Προσθέστε ένα νέο πρότυπο.
Μετονομασία	Μετονομάστε το τρέχον πρότυπο.
Διαγραφή	Διαγράψτε το τρέχον πρότυπο.
Εξαγωγή	Εξαγωγή του τρέχοντος προτύπου σε αρχείο.
Εισαγωγή	Εισάγετε ένα αρχείο προτύπου.

Εργασία σε Σάρωση/CAD

Διαδικασία σάρωσης

Με βάση τα στοιχεία που εισάγατε, προχωράτε στη σάρωση.

1. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες θεραπείας και επιλέξτε τις απαραίτητες επιλογές σάρωσης.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Διαδικασία CAD

Το Medit Link είναι ενσωματωμένο με το exocad.

CAD	Καταχώρηση πληροφοριών θεραπείας	Επιβεβαίωση των πληροφοριών θεραπείας	Άμεση εκτέλεση CAD	Εισαγωγή αποτελεσμάτων CAD πίσω στο Medit Link
exocad	Ο	Ο	Ο	Ο

1. Στις Ρυθμίσεις >Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος, μπορείτε να συνδέσετε το πρόγραμμα CAD της επιλογής σας από τη λίστα.
2. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες εργασίας και επιλογές σχεδίασης στην καρτέλα CAD.
3. Κάντε κλικ στο «CAD» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
4. Το συνδεδεμένο πρόγραμμα CAD εκτελείται και τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα.
5. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση του CAD.

Σημείωση

Το Medit Link για Mac δεν υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης με CAD.

Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης

Εκτός από την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων με συνεργάτες μέσω παραγγελιών, το Medit Link σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αρχεία αποτελεσμάτων σας στην επιθυμητή μορφή αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close Export

Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αποτελεσμάτων.
Όνομα φακέλου	Το σύστημα δημιουργεί έναν νέο φάκελο και αποθηκεύει όλα τα αρχεία αποτελεσμάτων σε αυτόν. Το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου ορίζεται από τον κανόνα ονομασίας. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του φακέλου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας από τις Ρυθμίσεις >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία φακέλου.
Όνομα αρχείου	Ορίστε το όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Ο κανόνας ονομασίας ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του αρχείου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας μέσω των Ρυθμίσεων >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία αρχείου
Τύπος CAD	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα σχεδιασμού. Το Medit Link θα προσαρμόσει τα αρχεία με βάση αυτήν την επιλογή, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε στον σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.


Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση αρχείων	Συμπίεστε όλα τα αποτελέσματα σε ένα μόνο αρχείο.
Συνδυασμός μεμονωμένου πλέγματος	Συνδυάστε το αποτέλεσμα της άνω ή της κάτω γνάθου με το μεμονωμένο δόντι. Χρήσιμο όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή πολλών αρχείων σε ένα πρόγραμμα.
Εξαγωγή όλων συγκλεισιακή σχέση	Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να εξαγάγετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα.
Αποθήκευση πληροφοριών περιστατικού ως αρχείο PDF	Αποθηκεύστε τις πληροφορίες του περιστατικού ως pdf με το αποτέλεσμα.

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων ενός ή πολλαπλών περιστατικών ταυτόχρονα με την επιλογή «Εξαγωγή» πάνω από τη λίστα περιστατικών στο Case Box και στο In Box.

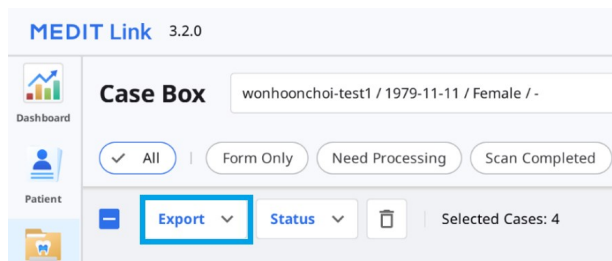

1. Μεταβείτε στο In Box ή στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για τα οποία θέλετε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων από τη λίστα.

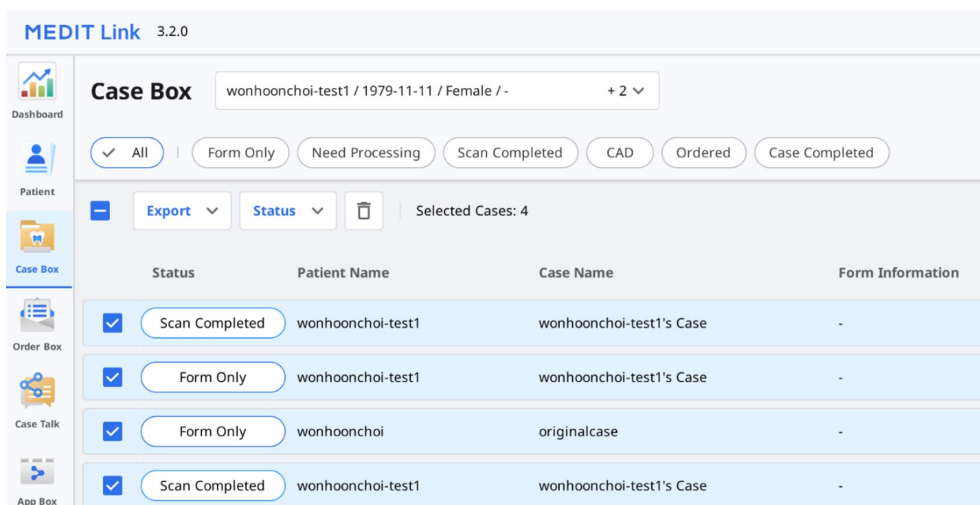

3. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή» και επιλέξτε «Αρχεία αποτελεσμάτων».

Export ▼

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

- Ορίστε το φάκελο προορισμού, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Σημείωση

Τα πεδία «Όνομα φακέλου» και «Όνομα αρχείου» δεν είναι επεξεργάσιμα κατά την εξαγωγή αρχείων για πολλαπλά περιστατικά.

Το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου δημιουργούνται αυτόματα σύμφωνα με τους κανόνες που έχετε ορίσει στα «Κανόνες για ονομασία φακέλου» και «Κανόνες για ονομασία αρχείου» από τις Ρυθμίσεις > Επιλογές εξαγωγής.

- Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
- Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question

?


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για τα αρχεία αποτελεσμάτων της σάρωσης για ένα περιστατικό με το εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

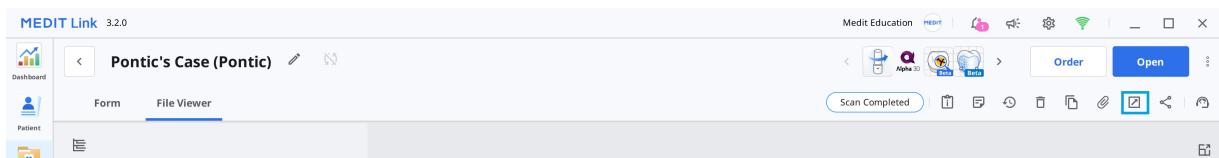


1. Μεταβείτε στο In Box ή στο Work Box.
2. Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.




4. Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

5. Στην καρτέλα «Λίστα αρχείων», μπορείτε να επιλέξετε τα απαιτούμενα αρχεία για το περιστατικό καταργώντας την επιλογή για όσα είναι περιττά.

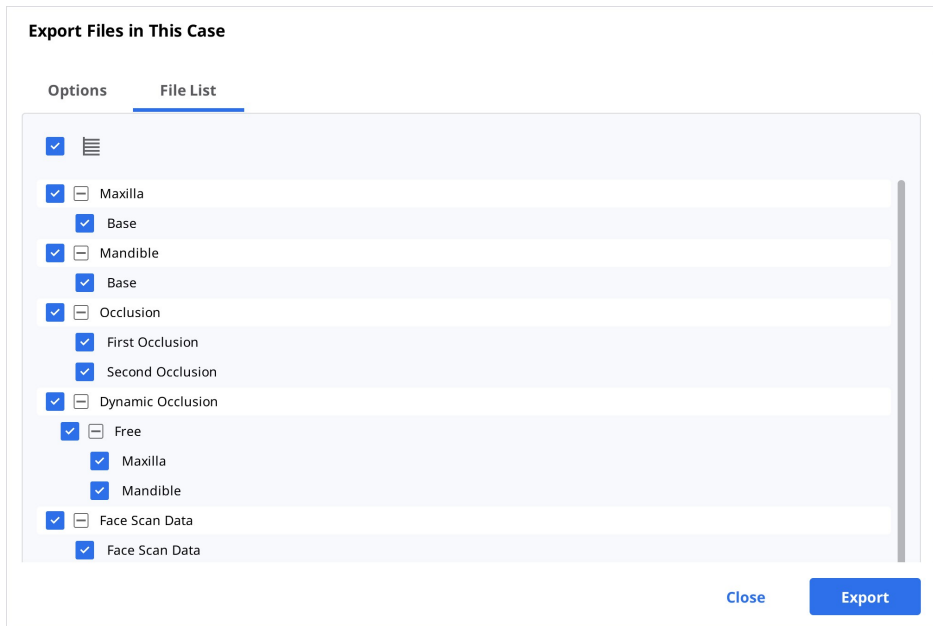


6. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
7. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

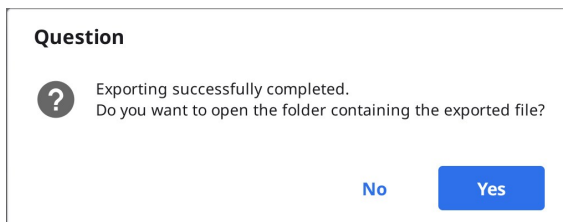

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων


Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων από το επεκτεταμένο μενού στο πρόγραμμα προβολής αρχείων.

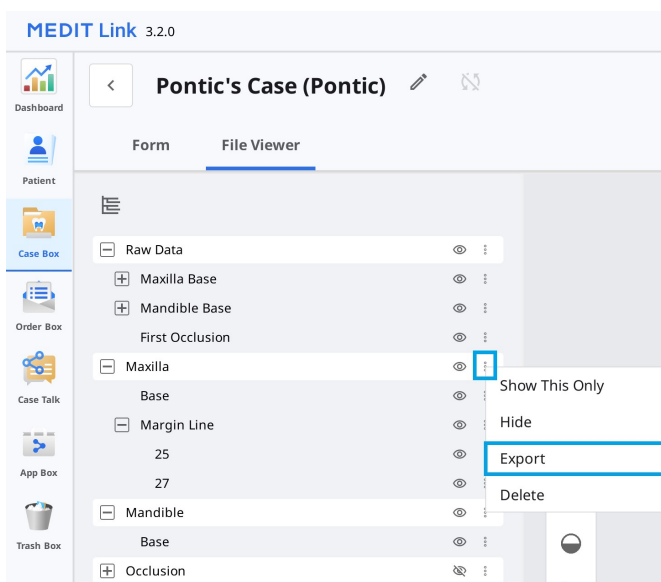

1. Μεταβείτε στο In Box ή στο Work Box.
2. Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες δίπλα στην ομάδα δεδομένων ή σε μια οντότητα στο δέντρο δεδομένων στην καρτέλα Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

...

4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

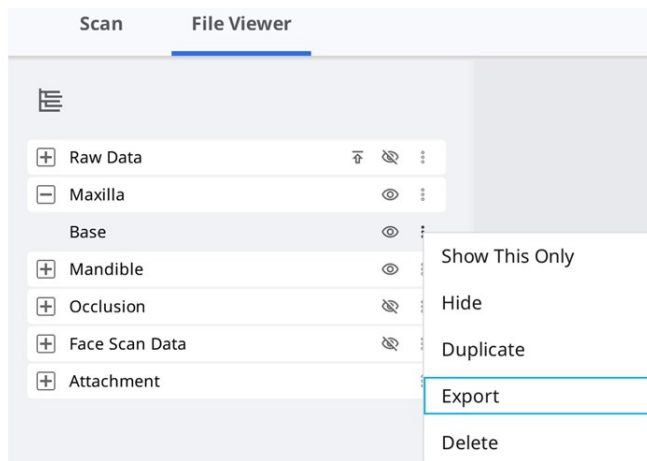

5. Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

6. Μπορείτε να δείτε ότι μόνο τα αρχεία που επιλέξατε στο δέντρο δεδομένων είναι επιλεγμένα στη λίστα αρχείων.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία εξαγωγής της λίστας περιστατικών σε μορφή CSV.

Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών με βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε εύκολα τα περιστατικά.

1. Μεταβείτε στο In Box ή στο Work Box.
2. Επιλέξτε τα περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή» και επιλέξτε «Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται)» ή «Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία)».

Export **Status**

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

🔑 Σημείωση

Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με τα στοιχεία που εμφανίζονται την δεδομένη στιγμή στην οθόνη. Μεταβείτε στις Επιλογές Προβολής > Στοιχεία πίνακα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία όπως επιθυμείτε. Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των Κατάσταση, Όνομα περιστατικού, Ημερομηνία γέννησης, Πληροφορίες φόρμας, Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας και Όνομα εργαστηρίου.

4. Καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη λίστα.
5. Η λίστα περιστατικών αποθηκεύεται ως αρχείο CSV.


Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου

Το Medit Scan for Clinics παρέχει μία λειτουργία δημιουργίας της γραμμής περιθωρίου, και το Medit Link μπορεί να μεταφέρει τη γραμμή περιθωρίου σε πρόγραμμα CAD.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα

Γενικά, το Medit Link μετατρέπει τη γραμμή του περιθωρίου σε χρώμα και εξάγει το αποτέλεσμα με την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο μαζί. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη γραμμή περιθωρίου στο cad τους αναφέροντας τις πληροφορίες χρώματος.

Παράδειγμα:

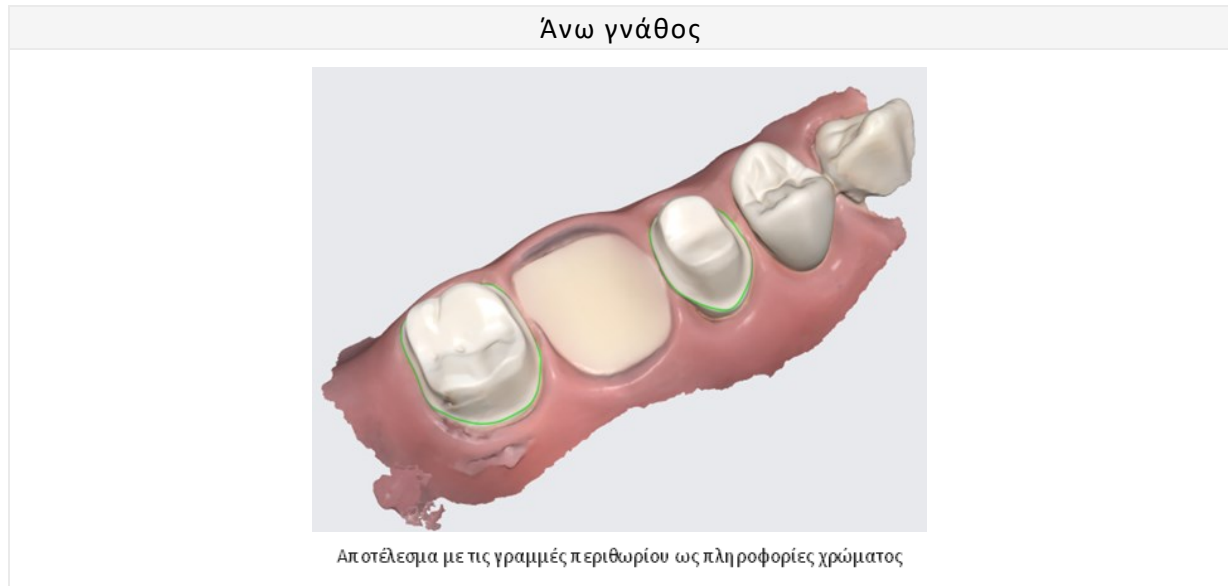

🔑 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για μορφές που περιλαμβάνουν πληροφορίες χρώματος όπως, meditMesh, OBJ και PLY. Η γραμμή περιθωρίου δεν μετατρέπεται σε STL.

🔑 Σημείωση


Τύπος CAD >3shape δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο

Στην περίπτωση του Exocad, το Medit Link εξάγει τη γραμμή περιθωρίου στο «~margin.xyz» που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο exocad.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο στο exocad χωρίς πρόσθετη εργασία.

Παράδειγμα:

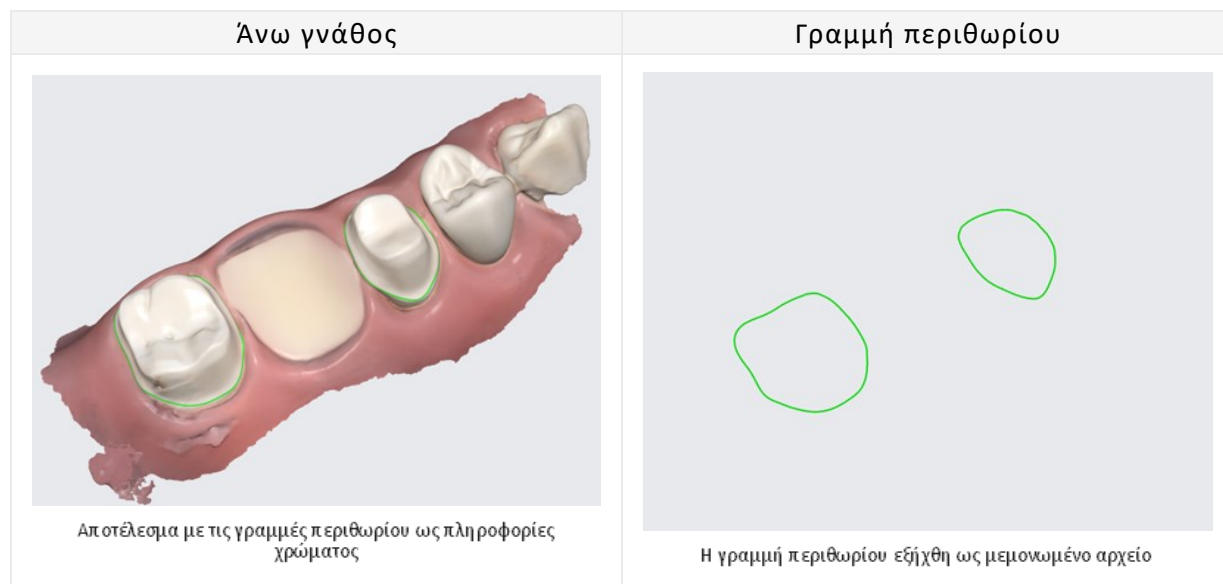

Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link

Το Medit Link παρέχει μια λειτουργία λήψης.

Εάν θέλετε να λάβετε τα αρχεία αποτελεσμάτων χωρίς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Medit Link, μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων από την υπηρεσία ιστοσελίδας της Medit Link.

Σημείωση


Τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο Medit Cloud για λήψη των αρχείων από την ιστοσελίδα.

Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο μενού της υπηρεσίας ιστοσελίδας της Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί «Λήψη» επάνω δεξιά.

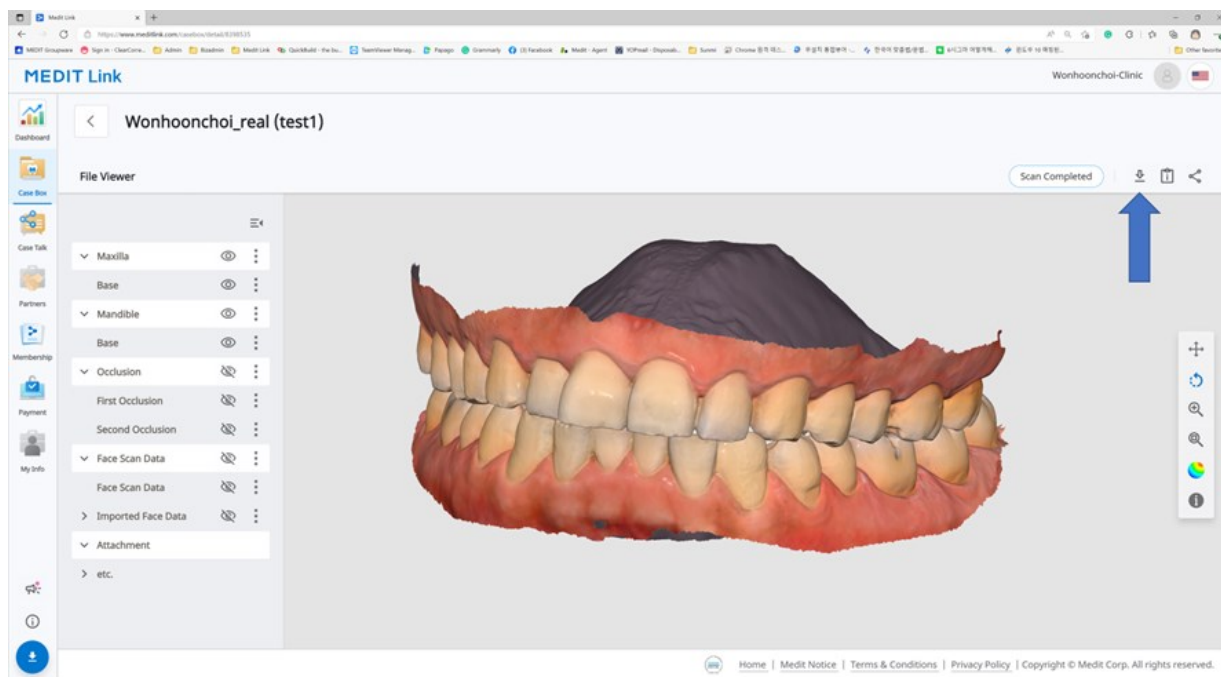


Web Viewer

Όταν κοινοποιείτε το περιστατικό χρησιμοποιώντας το Case Talk, μπορείτε να ορίσετε εάν θα επιτρέπεται η λήψη ή όχι.

Εάν επιλέξετε «Εκχώρηση άδειας λήψης» και κοινοποιήσετε το περιστατικό, όλοι οι χρήστες που συνδέονται στον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των αρχείων.

The screenshot shows the 'Share through Case Talk' dialog box. It has a title bar with a question mark icon. The main content includes: a 'Share with Anyone' dropdown menu; a section for 'Expiration Date' with a date picker set to '2022-04-27' and a note 'You can extend the period up to 90 days from today.'; a 'PIN Code' section with a checkbox 'PIN Code' and a text input 'Enter PIN Code', with a note 'Set the PIN code using six digits for privacy protection.'; three checked checkboxes: 'Share the patient's name', 'Grant Download Permission Premium Feature' (highlighted with a blue box), and 'Allow comments'. Below these is a 'Comment' section with a text input 'Please enter your comment.' and a character count '0/1024'. At the bottom, there is a warning icon and a paragraph of legal text, followed by 'Close' and 'Get Link' buttons.

Στο Web Viewer, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «Λήψη» επάνω δεξιά.

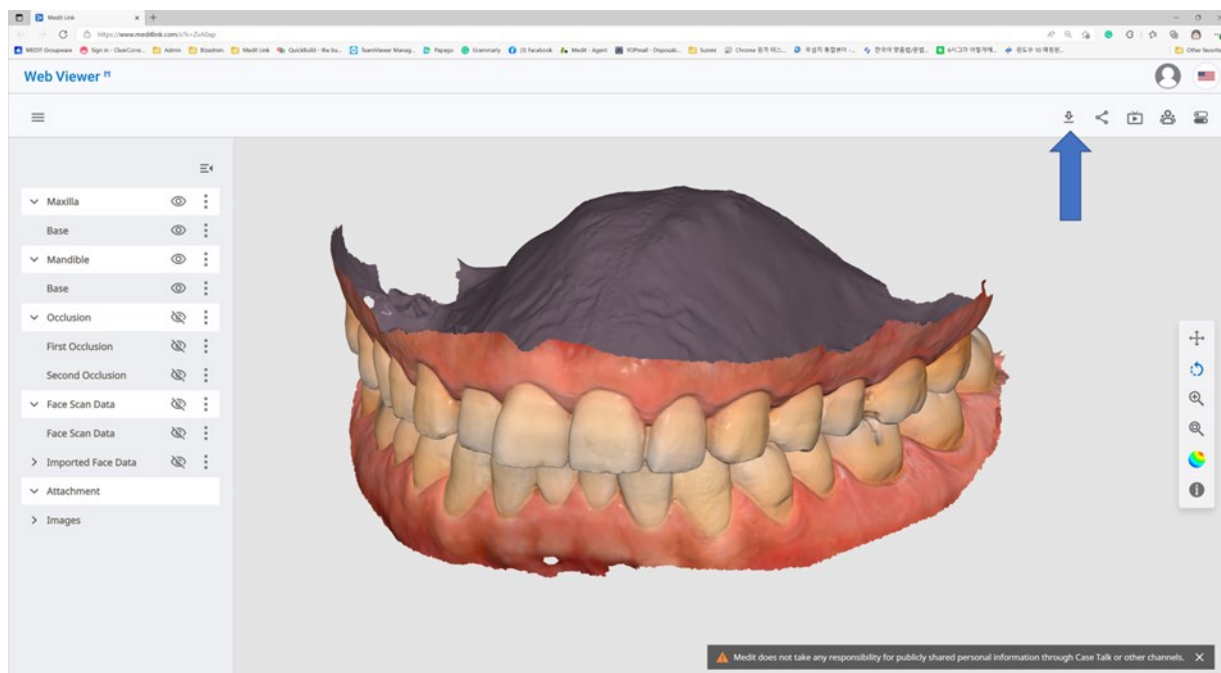

1. Κάντε κλικ στην «Λήψη».



2. Επιλέξτε τη μορφή πλέγματος από το παράθυρο διαλόγου λήψης.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close OK

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK».

Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών

Μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε ένα περιστατικό με δεδομένα που λαμβάνονται από συνδεδεμένα προγράμματα και επισυνάπτονται από τον χρήστη.

Παραγγελία περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία για τους συνεργάτες σας στο Case Box.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγελία».
2. Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγγελία σας.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Inchon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
8:15 AM

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Επιλέξτε έναν συνεργάτη.
4. Ελέγξτε τις πληροφορίες προϊόντος από την καρτέλα της Λίστας παραγγελιών.
 - ο Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κοινοποιήσετε το όνομα του ασθενούς.
5. Ελέγξτε τα αρχεία προς παραγγελία από την καρτέλα Λίστας αρχείων.
6. Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
 - ο Η προεπιλεγμένη τιμή ορίζεται σε 7 ημέρες μετά την ημερομηνία παραγγελίας.
7. Μπορείτε να προσθέσετε σημείωση και ετικέτες στον συνεργάτη σας για να περιγράψετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
8. Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να στείλετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα επιλέγοντας «Παραγγελία όλων συγκλεισιακή σχέση».
9. Συνεχίστε με την παραγγελία σας.

Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)

- Αποδοχή παραγγελίας κατά τη παραλαβή.
- Οι αποδεκτές παραγγελίες θα προωθηθούν στο Work Box.

Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)

- Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία πριν την αποδεχτεί ο συνεργάτης σας.
- Τα περιστατικά που ακυρώθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

Απορριπτές παραγγελίες (In Box)

- Μπορείτε να απορρίψετε μια παραγγελία που λάβατε.
- Τα περιστατικά που απορρίφθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού που παραγγέλνεται από το Order Box στον λογαριασμό κλινικής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το περιστατικό που λάβατε από τον λογαριασμό εργαστηρίου του In Box.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Πληροφορίες παραγγελίας	Οι πληροφορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην παραγγελία είναι οι εξής: ID παραγγελίας/όνομα ασθενούς/όνομα λογαριασμού/ημερομηνία σάρωσης/ημερομηνία παραγγελίας/ημερομηνία παράδοσης/ημερομηνία λήξης παράδοσης/σημείωση. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του προϊόντος της παραγγελίας και τις πληροφορίες αποστολής.
Λίστα παραγγελιών	Η λίστα παραγγελιών εμφανίζει τις λεπτομέρειες του παραγγελθέντος προϊόντος.
Αποστολή	Εισάγετε/ελέγξτε τις πληροφορίες αποστολής.

Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)

Εισάγετε τις πληροφορίες αποστολής για τη ολοκληρωμένο περιστατικό και ξεκινήστε την αποστολή.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή.
2. Εισάγετε τα στοιχεία αποστολής και κάντε κλικ στην «Καταχώριση».

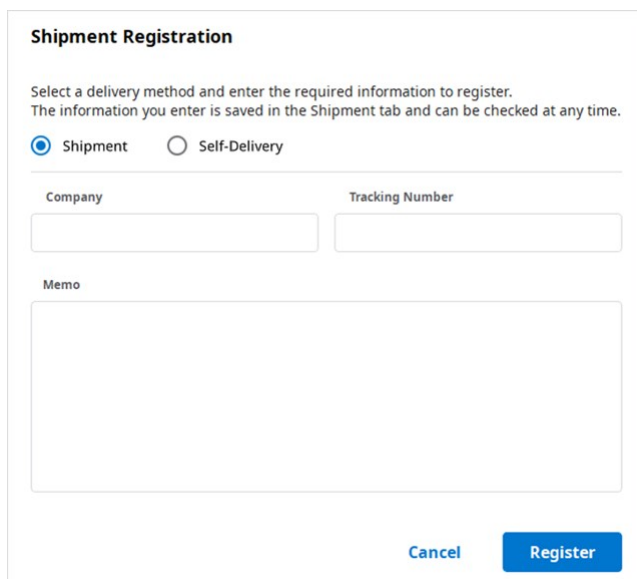

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Οι καταχωρημένες πληροφορίες αποστέλλονται στον συνεργάτη σας.

Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης

Μπορείτε να ορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης κατά την υποβολή μιας παραγγελίας και αυτές οι πληροφορίες θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Κατά την παραγγελία από το Case Box, μπορείτε να εισάγετε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης.

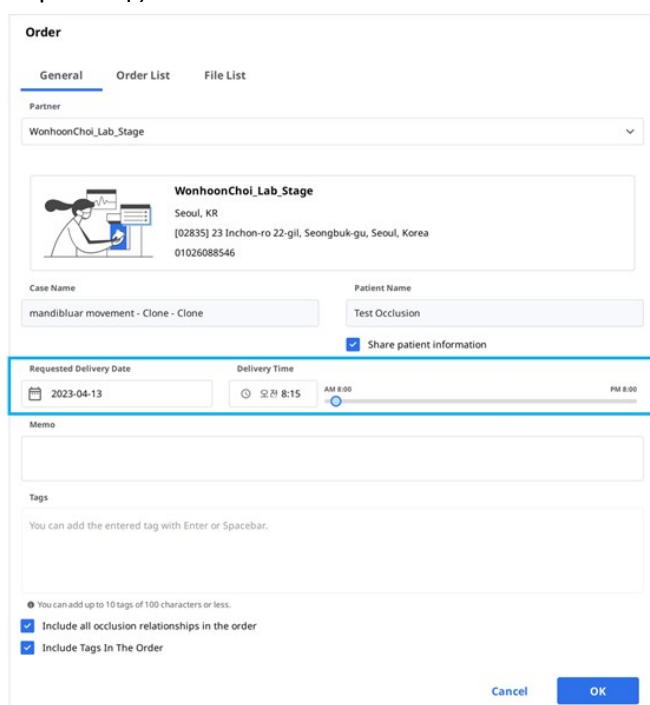

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας.

- Εισάγετε την ημερομηνία/ώρα που θέλετε να παραλάβετε τα προϊόντα και προχωρήστε στην παραγγελία.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εύκολα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

Ορισμός αναμενόμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Μπορείτε να εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης για το περιστατικό που παραγγείτε από το In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The top bar includes the title 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic' and buttons for 'Reject' and 'Confirm Order'. The left sidebar contains navigation icons. The main area is divided into 'Order' and 'File Viewer' tabs. The 'Order' tab shows fields for Order ID (10413603), Patient Name (test), Partner Name (Wonhoonchoi-Clinic), Scanning Date (2022-09-29 7:56), Order Date (2022-09-29 8:13), Requested Delivery Date (2022-10-01 10:30), and Expected Delivery Date (2022-10-01 10:30). A 'Memo' section contains text about 'Scanbody Library'. The 'Order List' table on the right shows three items: Implant Crown, Cementation Ty., Multi-Layered Zirconia, None Sh., 0. The total at the bottom right is KRW 0.

1. Ελέγξτε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης με τον συνεργάτη και προγραμματίστε εκ νέου χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επεξεργασία».



2. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη εάν είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν απαιτείται, μπορείτε επίσης να αφήσετε ένα σχόλιο.
3. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

The screenshot shows a date picker for March 2022. The date 17 is selected. Below the calendar is a 'Delivery Time' slider set to 11:45 AM. There is also a 'Comment' text area and 'Cancel' and 'Apply' buttons at the bottom.

4. Η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και το σημείωμα θα προωθηθούν μαζί με την παραγγελία.
 - ο Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία και τις σημειώσεις στο Order Box.
 - ο Μπορείτε να αλλάξετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και οι αλλαγές θα

προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

5. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό του περιστατικού χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ιστορικό».



Ολοκλήρωση περιστατικού

Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)


Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, κάντε κλικ στο «Ολοκλήρωση» για να ολοκληρώσετε το περιστατικό.

Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών

Μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες στα δεξιά από το κουμπί «Άνοιγμα» ή «Επανάληψη σάρωσης».



Ολοκληρώστε την εργασία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο και επιλέγοντας «Done».

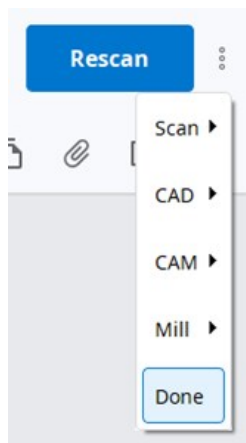

Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών

1. Μετάβαση στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για ολοκλήρωση.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
☒ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
☒ Form Only	test's Case	test	-
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown

3. Κάντε κλικ στο «Κατάσταση» και επιλέξτε «Done».

Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)

Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού από την πλευρά του εργαστηρίου, η κλινική θα πρέπει να το επιβεβαιώσει για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της παραγγελίας.

Η κλινική θα μπορέσει να βρει το κουμπί «Επιβεβαίωση παράδοσης» στο Order Box εάν το εργαστήριο ολοκληρώσει την εργασία του.

Κάνοντας κλικ σε αυτό, ολοκληρώνεται ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας και η κατάσταση του περιστατικού θα αλλάξει σε «Ολοκληρωμένο περιστατικό»

< test's Case - clone (test)

Order File Viewer

Confirm Delivery

Shipped

Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box

Για περιστατικά που δεν έχουν παραγγελθεί στο Εργαστήριο, μπορείτε να τα ολοκληρώσετε από το Case Box.

1. Μεταβείτε στο Case Box.
2. Επιλέξτε το περιστατικό που θέλετε να ολοκληρώσετε.

Case Box Patient

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Cas

Export Status Selected Cases: 4

Case Completed

	Status		Case Name
☐	Ordered	test	test's Case
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒	Scan Completed	test test(1234)	G11598492310180503424
☒	Scan Completed	test	test's Case
☒	Scan Completed	test	test's Case


3. Κάντε κλικ στο «Κατάσταση» και επιλέξτε «Case Completed».

Επικοινωνία με χρήση ετικετών

Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες για το περιστατικό σας χρησιμοποιώντας ετικέτες και να κάνετε αποστολή στους συνεργάτες σας.

Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού

Μπορείτε να εισάγετε ετικέτες όταν δημιουργείτε ένα νέο περιστατικό ή επεξεργάζεστε πληροφορίες του περιστατικού.

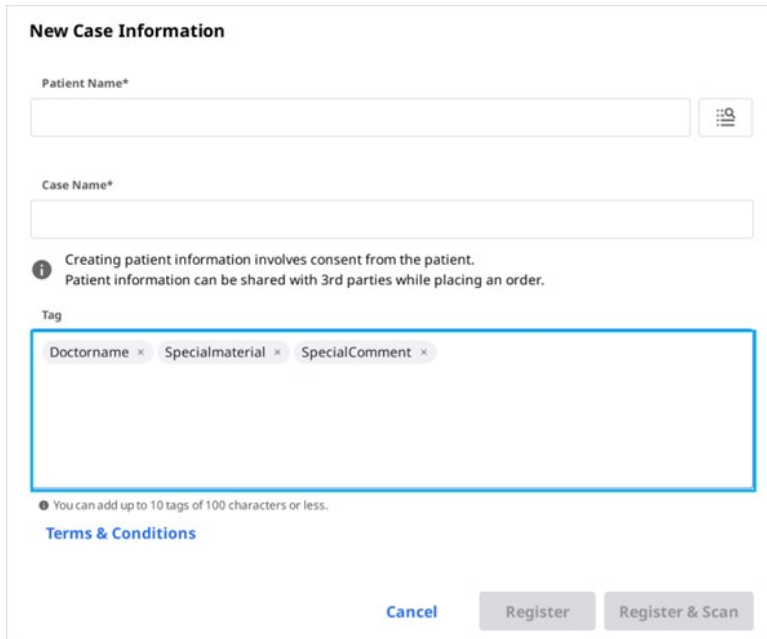

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε και να επιλέξετε ετικέτες που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

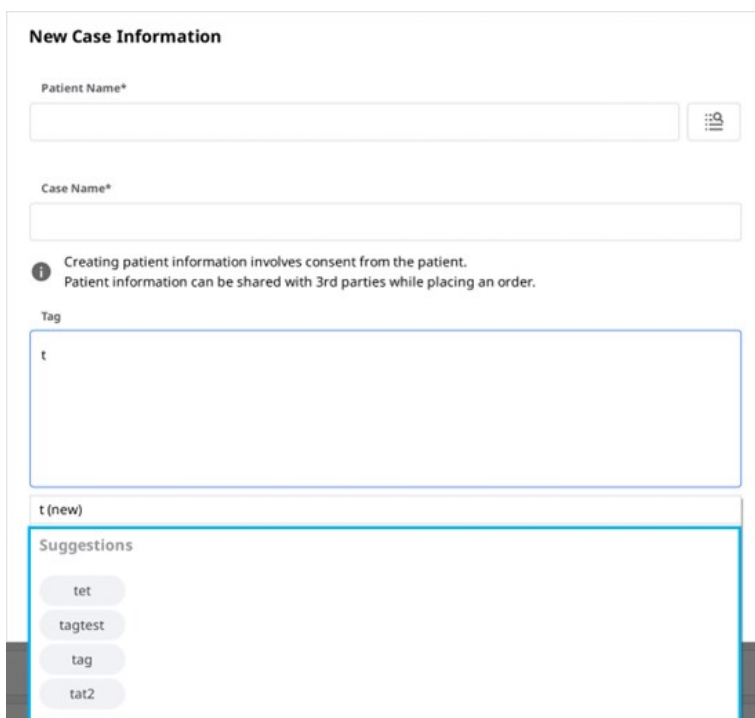

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε ετικέτες στο παράθυρο διαλόγου Παραγγελία κατά την παραγγελία.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
8:15

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...)

Form File Viewer

Raw Data Maxilla Base Mandible Occlusion

Occlusal Relationship 1

Scan Completed

Memo Edit

Tags
Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Save

