

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link


Introduction	6
Medit Link	6
Vue d'ensemble des services	6
Service Cloud	7
Plate-forme de gestion du flux de travail avec système de commande	7

Medit Link > Installation

Exigences du système	8
Exigences du système pour Windows	8
Exigences du système pour macOS	8
Configuration requise pour le service Web	8
Recommandé pour les navigateurs	8
Minimum pour les appareils mobiles	8
Installation sur Windows	9
Installation sur macOS	12

Medit Link > Commencer

S'inscrire et s'identifier	16
Site web Medit Link	16
S'inscrire	16
Connexion et page d'accueil	18

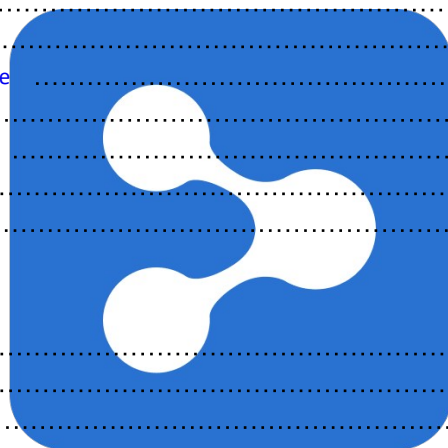

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	20
Vue d'ensemble du Dashboard	20
Medit Insights	20
S'inscrire à Medit Insights	21
Se désabonner de Medit Insights	22
Patient	23
Rechercher un patient	23
Case Box/Work Box	24
Filtrage des cas	24
Filtrage par patient	24
Filtrer par statut	25
Filtrer par durée	26
Filtrer par recherche	26
Détails du cas	26
Order Box/In Box	28
Détails de la commande	28
Onglets dans Order Box/In Box	28
Case Talk	29
Créer un Case Talk	29
Définition du type d'autorisation de partage et des options de partage	30
Détails Case Talk	31
Web Viewer	32
Annotation	33
Commentaires	34
Partage d'écran en temps réel	34
Arborescence des données	35

Contrôles de l'arborescence des données	
Contrôles du modèle 3D	35
Partners	37
Recherche de partenaires	37
Ma liste de partenaires	37
Invitation de partenaire	38
Membership	39
Adhésion	39
Mon plan	40
Stockage cloud	40
S'abonner	41
Se désinscrire	43
Informations de facturation	44
Comment ajouter un mode de paiement	44
Comment modifier un mode de paiement	46
Utiliser un code promotionnel	47
Enregistrer code promotionnel	47
Activation du code promotionnel	48
My Info	49
Mon compte	49
Ma clinique/Mon laboratoire (compte Administrateur uniquement)	49
Mon scanner	50
Autres menus	51
Avis et mise à jour	51
Informations Medit	51
Télécharger l'application Medit Link	51

Medit Link > Application Medit Link

Vue d'ensemble	53
Le tableau ci-dessous résume les menus disponibles dans chaque type de compte de clinique et de laboratoire.	53
Barre de titre	54
Mes informations	54
Notifications	54
Avis et mise à jour	55
Paramètres	55
Statut du réseau	56
Paramètres	58
Général	58
Gestion du stockage	59
Définir la période	59
Stockage local	59
Stockage cloud	60
Définir le programme connecté	60
Options d'exportation	61
Outil de conversion de cas	62
Exporter le cas	63
Importer le cas	64
Options de proxy	65
À propos	66
Guide de l'utilisateur	66
Menu	67
Dashborad	67
Patient	67
Ajouter un nouveau patient	68
Supprimer un patient	68

Fusionner les patients	
Case Box/Work Box	69
Onglets dans Case Box / Work Box	70
Fonctions dans Case Box/Work Box	70
Order Box/In Box	71
Onglets dans Order Box/In Box	72
Case Talk	72
App Box	72
Trash Box	73
Gestionnaire de synchronisation de cas	73
Téléverser	74
Télécharger	74
Informations Medit	75
Visualiseur de fichiers	76
Arborescence des données	76
Outils de contrôle du modèle	76
Contrôle du modèle 3D	77
Contrôle des images 2D	77
Outils de fonction	78
Capture d'image et notes	78
Capture ortho	78
Remplir les trous	80
Découpage	80
Optimiser l'alignement de l'occlusion	82
Mouvement mandibulaire	84
Gérer les données Multi occlusion dans le Visualiseur de fichiers	85
Comment gérer plusieurs résultats	85
Options de visualisation	86
Filtres de statut	86
Type de visualisation	87
Regroupement	87
Tri	87
Filtrage et recherche	89
Filtrage par patient	89
Filtrage par date	90
Fonctionnalités de recherche avancée	90

Medit Link > Flux de travail

Créer/Modifier/Cloner/Supprimer un cas	92
Création de cas	92
Créer un cas dans Case Box (Clinique)	92
Créer un cas dans Work Box (Laboratoire)	93
Modification des cas	93
Modifier un cas dans Case Box (Clinique)	93
Modifier un cas dans Work Box (Laboratoire)	94
Clonage de cas	95
Cloner un cas dans Case Box (Clinique)	95
Cloner un cas dans Work Box (Laboratoire)	95
Supprimer un cas	95
Supprimer un cas (Clinique et laboratoire)	96
Informations sur le formulaire	97
Enregistrement des informations de formulaire dans Case Box	97
Entrer dans l'onglet Formulaire	97
Entrer dans l'onglet CAD	97
Enregistrement des informations de formulaire dans Work Box	97

Entrer dans l'onglet Formulaire	
Entrer dans l'onglet CAD	98
Connexion des dents en bridge	98
Définition des options de numérisation	98
Medit Scan for Labs	98
Options générales	98
Options par dents	99
Ajout aux favoris	99
Ajouter aux favoris	99
Gérer les modèles favoris	99
Travail sur la numérisation/CAD	100
Processus de numérisation	100
Processus CAD	100
Obtenir les fichiers de résultats	101
Exporter les fichiers de résultats de numérisation	101
Exportation de fichiers de résultats à partir de la liste de cas	102
Exportation des fichiers de résultats à partir du Visualiseur de fichiers	103
Exportation de fichiers de résultats depuis l'arborescence des données	105
Exporter la liste de cas au format CSV	107
Exporter la ligne de marge	107
Exporter la ligne de marge en tant que couleur	107
Exporter la ligne de marge en tant que fichier	108
Télécharger des fichiers depuis Medit Link Web	108
Case Box/Work Box	109
Web Viewer	109
Commander/gérer les commandes	112
Commande de cas	112
Confirmer la commande (In Box)	112
Annuler une commande (Order Box)	113
Rejeter une commande (In Box)	113
Vérification des cas commandés	113
Saisie des informations d'expédition (In Box)	114
Gestion de la date de livraison	114
Définition de la date de livraison demandée (compte clinique)	114
Terminer le cas	116
Terminer (Work Box / In Box)	116
Terminer un cas à partir des détails du cas	116
Terminer les cas multiples à partir de la liste de cas	116
Terminer (Case Box / Order Box)	117
Terminer un cas non commandé dans Case Box	117
Communiquer à l'aide de tags	118
Ajouter des tags lors de la création d'un nouveau cas	118
Ajouter des tags lors de la commande	118
Vérifier les tags dans Détails de cas	119

Introduction

Medit Link

Medit Link est un outil collaboratif conçu pour faciliter la communication entre les cliniques et les laboratoires afin de supporter les flux de travail centrés sur le patient.

Il offre des fonctionnalités différenciées en fonction du type et des autorisations de chaque compte. Le programme offre une interface utilisateur conviviale pour la gestion du flux de travail, depuis la numérisation avec des scanners oraux et des scanners de modèles, la commande de cas et la conception et la production de prothèses.

Medit Link se compose d'un service web et d'une application informatique.

Vue d'ensemble des services

		Web	Application
		• Inscription et gestion du compte • Rechercher • Rechercher et gérer les partenaires • Partager des cas via Web Viewer avec un lien partageable • Accès aux cas depuis l'application • Gérer les commandes	• Saisir les informations du formulaire • Numériser • Gérer les commandes • Relier à la CAD • Gérer les patients
Clinique	Admin	Vous pouvez rechercher et gérer des partenaires et votre clinique et partager des cas. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Vous pouvez saisir des informations sur les formulaires, numériser, relier au CAD, passer des commandes et gérer les patients. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membre	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Laboratoire	Admin	Vous pouvez rechercher et gérer des partenaires et votre laboratoire et partager des cas. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Vous pouvez saisir des informations sur les formulaires, numériser, relier au CAD et gérer les commandes. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membre	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Service Cloud

Medit Link prend en charge le chargement/téléchargement automatique des bases de données et des fichiers via AWS (Amazon Web Services).

Les données stockées dans le cloud sont automatiquement synchronisées avec les ordinateurs de plusieurs utilisateurs de l'organisation afin qu'ils puissent accéder aux mêmes données à partir de n'importe quel ordinateur à tout moment. La sauvegarde et la restauration basées sur le cloud assurent la sécurité de toutes vos données. Il conserve vos données en toute sécurité, même en cas de perte de données due à une défaillance soudaine de l'ordinateur.

Le service cloud permet aux dentistes et aux laboratoires partenaires de partager rapidement des données sans avoir à envoyer des courriels ou à transférer manuellement les scans. Toutes les données, y compris les informations sur les patients, sont cryptées, stockées et transmises en toute sécurité. Medit respecte les lois et réglementations médicales telles que HIPAA et GDPR.

Plate-forme de gestion du flux de travail avec système de commande

Medit Link offre son propre système de commande.

- Medit Link permet aux utilisateurs d'établir des partenariats entre dentistes et laboratoires dentaires et de partager des données rapidement et facilement.
- Vous pouvez vérifier et gérer le statut des commandes.

Exigences du système



Veillez consulter les exigences du système pour Medit Scan for Clinics et Medit Scan for Labs si vous souhaitez utiliser le logiciel de numérisation avec votre scanner.

Exigences du système pour Windows

	Ordinateur portable et ordinateur de bureau
Processeur	Intel Core i5 2.6 GHz ou supérieur
RAM	16 GB ou supérieur
Carte graphique	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) ou supérieur / ou carte vidéo AMD équivalente
OS	Windows 10 64 Bit (indisponible en 32 Bit) ou supérieur

Exigences du système pour macOS

	Mac
Processeur	M1 avec 8 cœurs, GPU 7 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
RAM	16 GB ou supérieur
OS	Monterey 12

Configuration requise pour le service Web

Recommandé pour les navigateurs

	Navigateurs
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pour les appareils mobiles

	Android	iOS
Appareil	Équivalent du Galaxy S7 ou supérieur	Équivalent de l'iPhone 7 ou supérieur
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB ou plus	2 GB ou plus
AP	Supérieur au Snapdragon 710	A10 Fusion


Installation sur Windows

Medit Link est installé en tant que pack avec des programmes d'acquisition de numérisation - Medit Scan for Clinics et Medit Scan for Labs.


1. Exécutez Medit_LinkSetup.exe.
2. Choisissez une langue pour l'installation.
3. Sélectionnez le dossier pour installer Medit Link. Veuillez lire et accepter les conditions générales de licence et cliquez sur "INSTALLER".

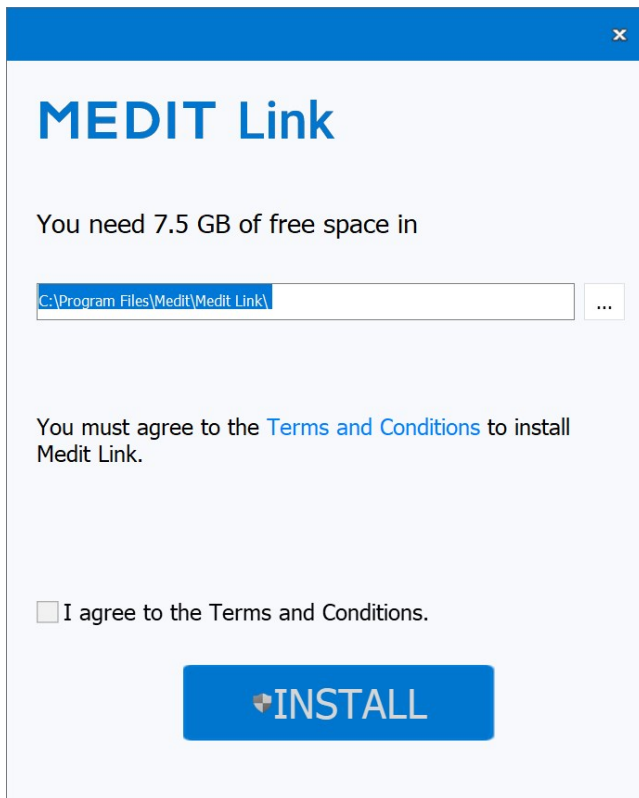

4. Assurez-vous que le câble du scanner est déconnecté de l'ordinateur avant de passer à l'étape suivante. L'installation peut ne pas se poursuivre si le scanner est connecté à votre PC.
5. Le programme s'installe automatiquement et peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas et ne débranchez pas votre PC avant la fin de l'installation.

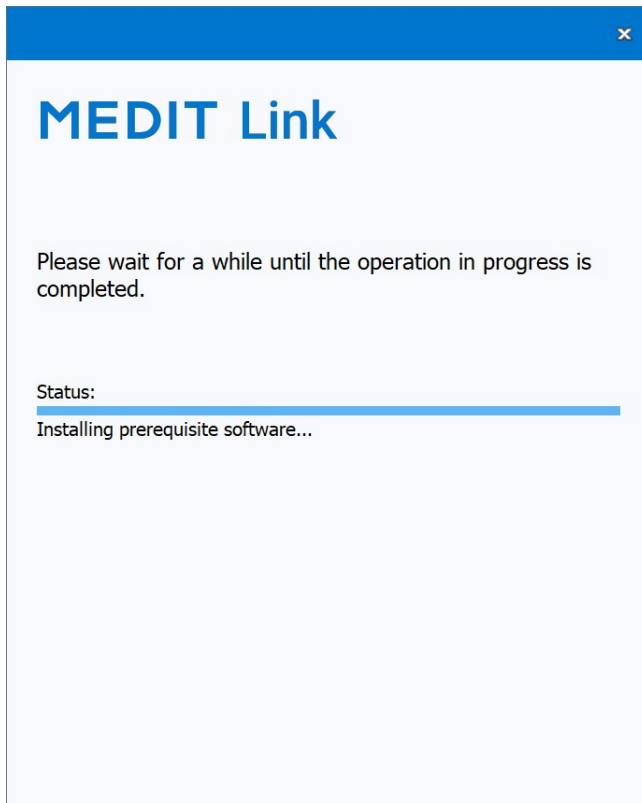

6. Veuillez redémarrer votre PC une fois l'installation terminée. Vous pouvez continuer sans redémarrer le PC si vous n'avez pas le scanner.

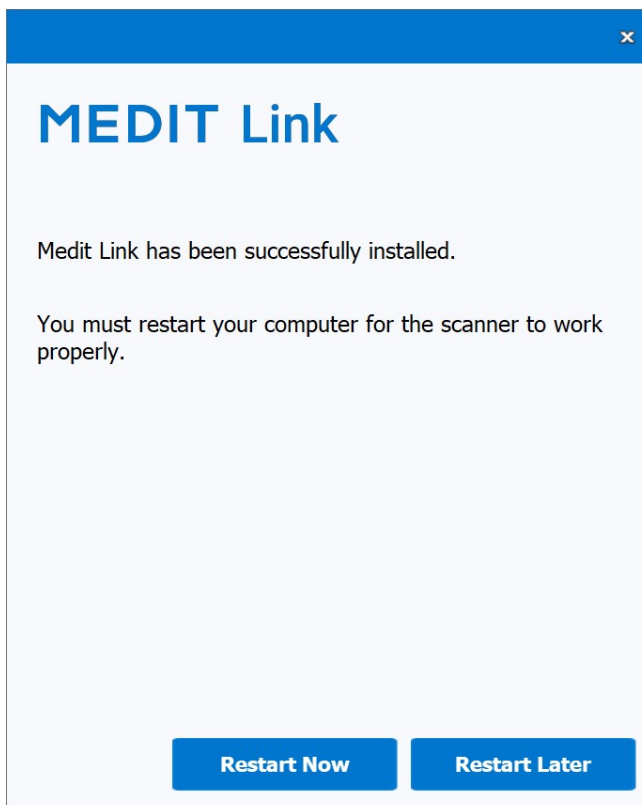


 Note

Si vous ne redémarrez pas votre PC une fois l'installation terminée, le scanner risque de ne pas fonctionner correctement.


Installation sur macOS

Medit Link est installé en tant que pack avec Medit Scan for Clinics.


1. Exécutez Medit_Link_x.x.x.pkg et cliquez sur "Continuer".

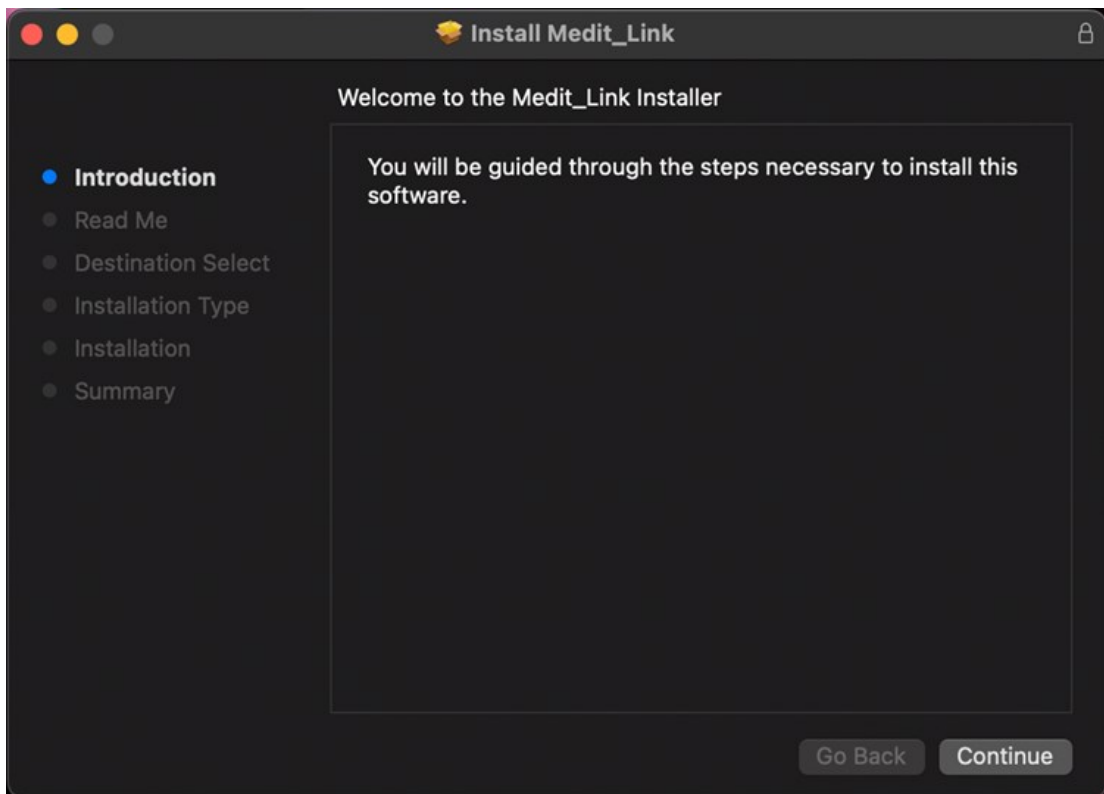


2. Lisez le contrat de licence utilisateur final et cliquez sur "Continuer".

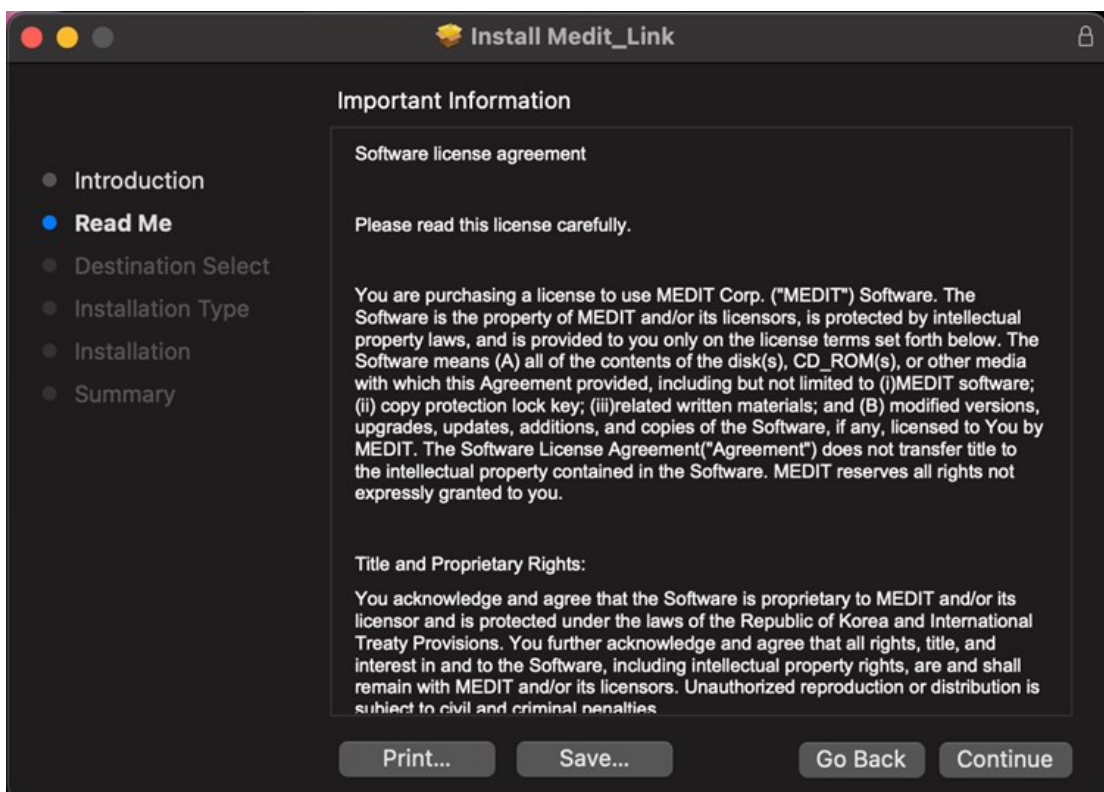

3. Choisissez le disque pour l'installation et cliquez sur "Continuer".

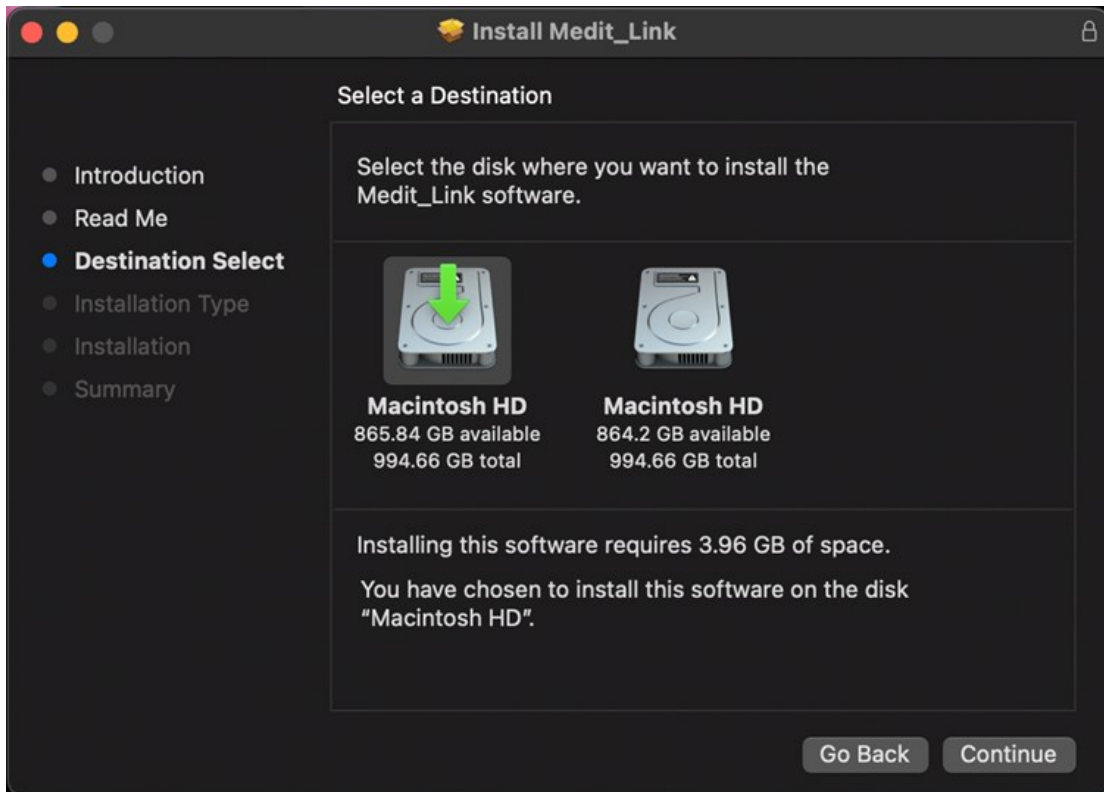


4. Cliquez sur "Modifier l'emplacement d'installation..." pour modifier la destination d'installation.

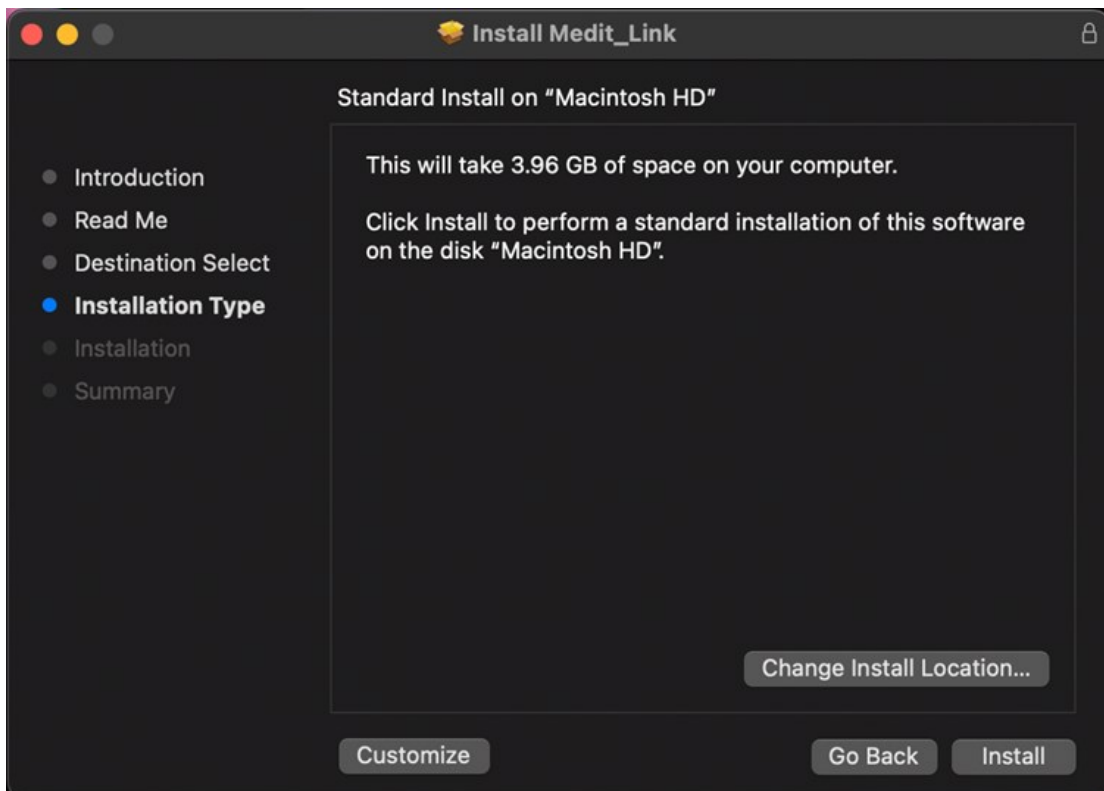


5. Cliquez sur "Installer" et tapez votre mot de passe Mac pour autoriser l'installation si nécessaire.



6. Attendez que l'installation soit terminée.

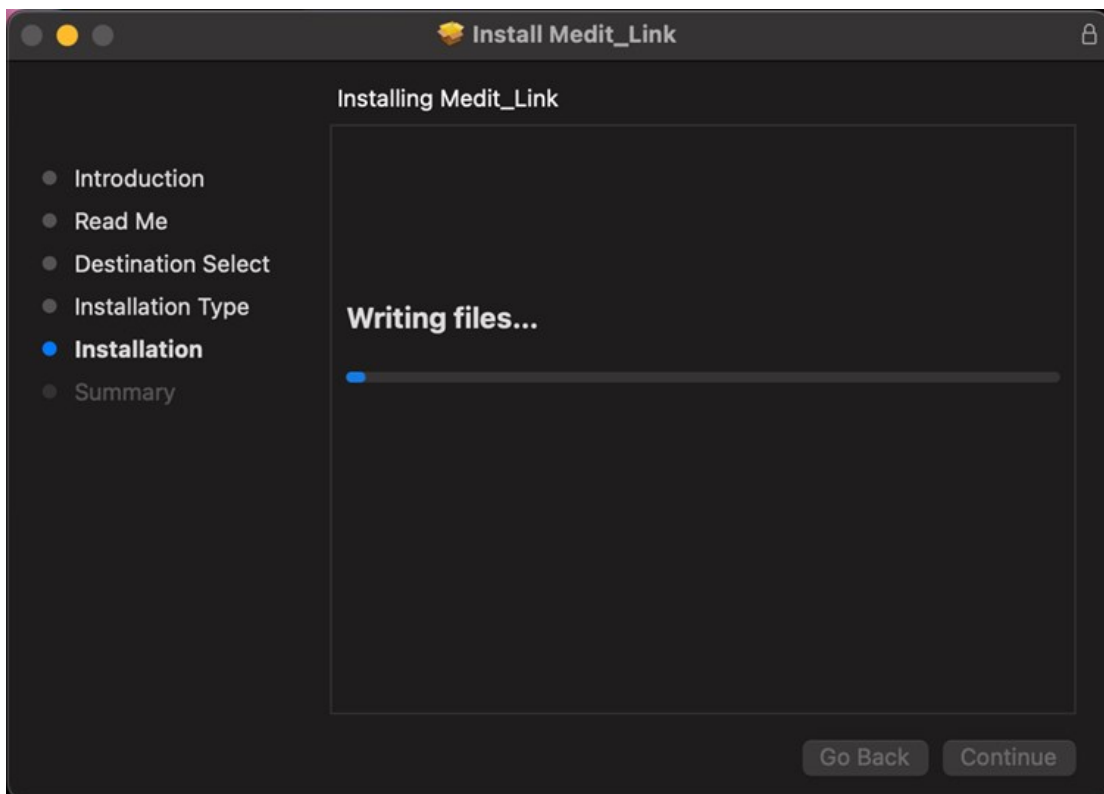


7. Cliquez sur "Fermer" pour quitter la fenêtre d'installation.

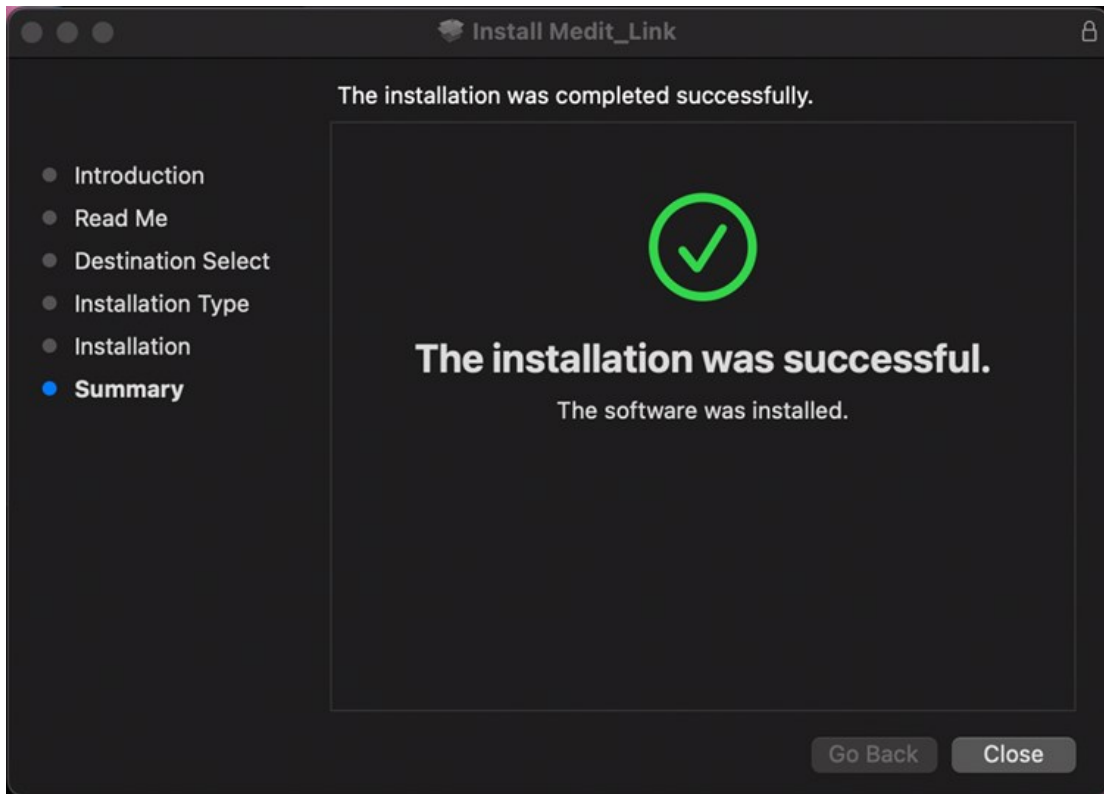

S'inscrire et s'identifier

Site web Medit Link

Inscrivez-vous au service Medit Link sur www.meditlink.com.

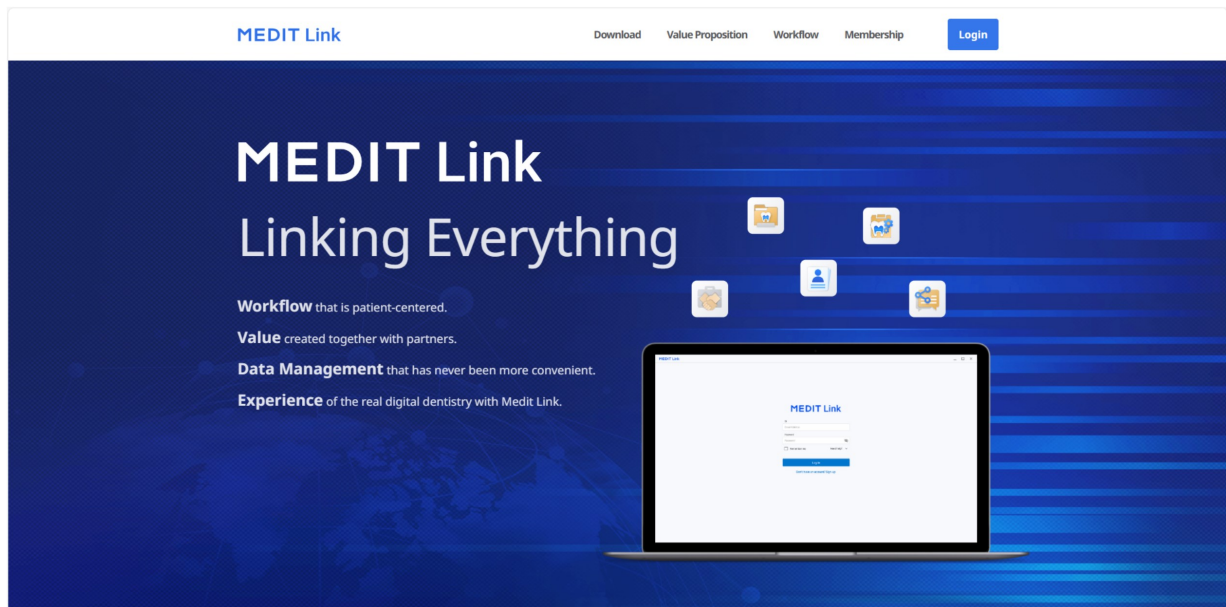

Note

Inscrivez-vous à Medit Link China sur www.meditlink.cn.

S'inscrire

Pour utiliser le service Medit Link, vous devez créer un compte. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Medit Link après avoir créé un compte en tant que clinique ou laboratoire.

Les utilisateurs peuvent sélectionner l'un des quatre types de compte suivants pour s'inscrire et utiliser le service avec des fonctionnalités et des privilèges complets ou limités, en fonction du type de compte.

- Clinique - Admin
- Clinique - Membre
- Laboratoire - Admin
- Laboratoire - Membre

L'administrateur est généralement un représentant de votre organisation et a accès à toutes les fonctions et à tous les services de Medit Link. En revanche, le compte de membre a un accès limité.

Pour vous inscrire, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur "Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous." sur la page de connexion.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Après avoir lu les descriptions fournies, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour le type de compte souhaité.



Clinic



Lab

Administrator
Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator
Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member
Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member
Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Le formulaire d'inscription suivant s'affiche.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country ▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

View

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Saisissez le nom de la clinique ou du laboratoire, puis, en fonction du type de compte souhaité, procédez comme suit :
 - Si vous vous inscrivez en tant qu'administrateur, cliquez sur "Voir les disponibilités" pour voir si le nom saisi est disponible.
 - Si vous vous inscrivez en tant que membre, cliquez sur "Rechercher".
 L'administrateur doit déjà avoir enregistré votre organisation avant que vous ne vous inscriviez.
5. Remplissez le reste du formulaire d'inscription et cliquez sur "S'inscrire".

Note

Si vous acceptez de recevoir des informations commerciales lors de votre inscription, vous recevrez des informations utiles sur les produits et services Medit.

6. Un e-mail de vérification vous sera envoyé.
7. Pour terminer la procédure d'inscription, vérifiez votre adresse e-mail en utilisant le lien reçu.

Connexion et page d'accueil

1. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe sur la page de connexion et cliquez sur "Connexion".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

- La boîte de dialogue suivante s'affiche si vous n'avez pas renseigné les informations relatives à votre entreprise.

Welcome, stage-test-wh!

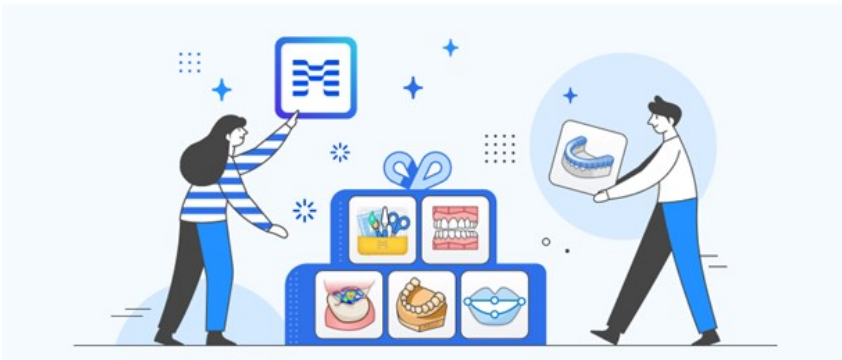

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

Note


Pour utiliser les services de Medit Link, les informations relatives à votre clinique ou laboratoire doivent être saisies à l'aide du compte administrateur.

- Cliquez sur le bouton "Aller à ma clinique" ou "Aller à mon laboratoire" et saisissez les informations relatives à la clinique ou au laboratoire, notamment le nom de l'entreprise, les images de couverture/logo, les services proposés, l'adresse et le numéro du bureau, etc.
- Les informations saisies sur la page d'accueil peuvent être modifiées à tout moment dans l'onglet My Info > Ma clinique ou Mon laboratoire dans Medit Link Web.

Dashboard

Vue d'ensemble du Dashboard

Vous pouvez consulter les statistiques de tout le travail effectué sur Medit Link sous forme de graphiques et de diagrammes visuels à la fois dans Medit Link App et Medit Link Web.

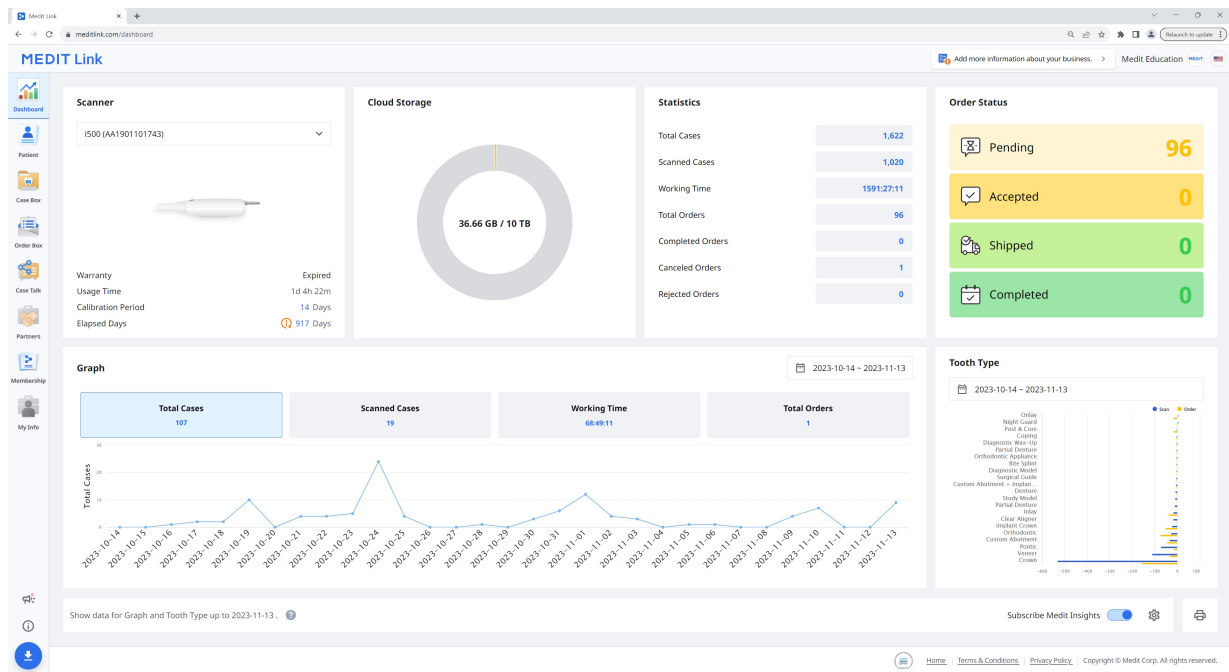

Les graphiques et les tableaux du dashboard présentent les statistiques de tous les travaux effectués dans Medit Link.

Scanner	Fournit des informations sur les scanners actifs, y compris la garantie, la durée d'utilisation du scanner, l'intervalle de calibrage et le temps écoulé de calibrage.
Stockage cloud	Affiche la capacité totale du cloud et l'espace utilisé.
Statistiques	Fournit des statistiques sur les cas en fonction du statut de travail.
Statut de la commande	Fournit des statistiques sur les cas en fonction du statut de la commande.
Graphique	Informations sur le graphique du travail par période.
Type de dent	Fournit des statistiques sur le nombre de scans et de commandes selon les informations de traitement.


Medit Insights

Medit Insights est un service de rapport qui vous aide à analyser vos statistiques d'utilisation.



Le service suivant n'est pas disponible sur Medit Link China.

- [Medit Insights](#)

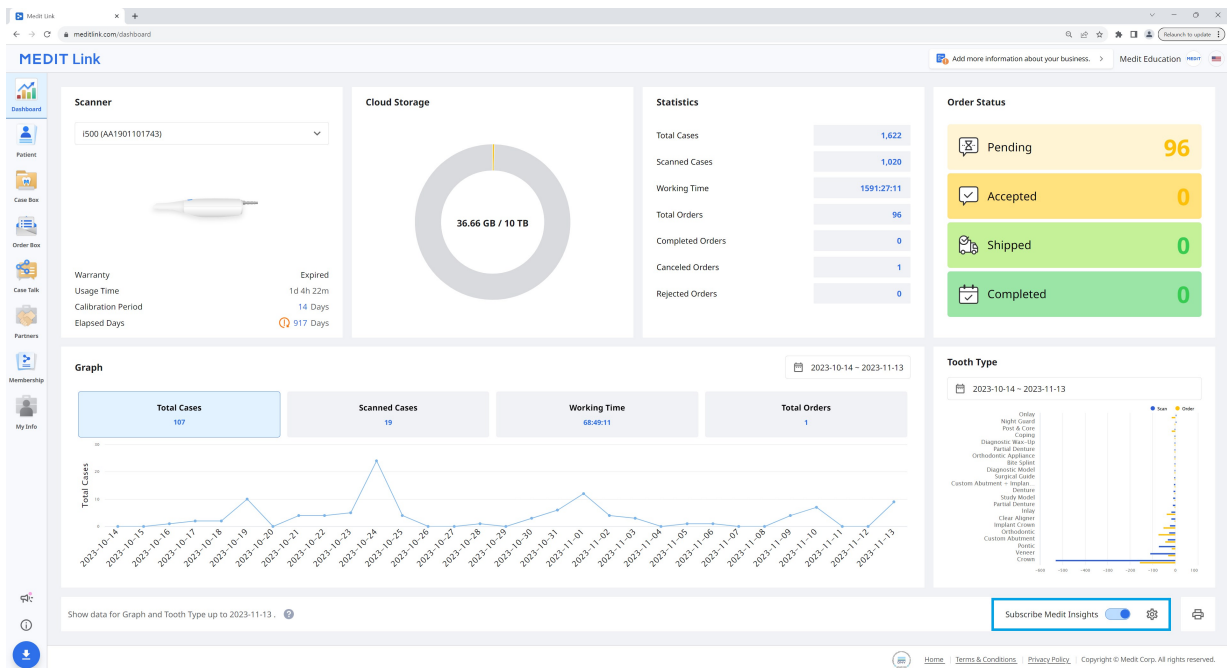

S'inscrire à Medit Insights

Vous pouvez recevoir un e-mail de rapport le deuxième jour de chaque mois. Aucun processus d'inscription supplémentaire n'est requis. Activez simplement "S'abonner à Medit Insights".

Si vous n'utilisez pas l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour le compte Medit Link, vous pouvez définir une autre adresse e-mail pour recevoir Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Le deuxième jour de chaque mois, vous recevrez un e-mail contenant des statistiques, comme indiqué ci-dessous.

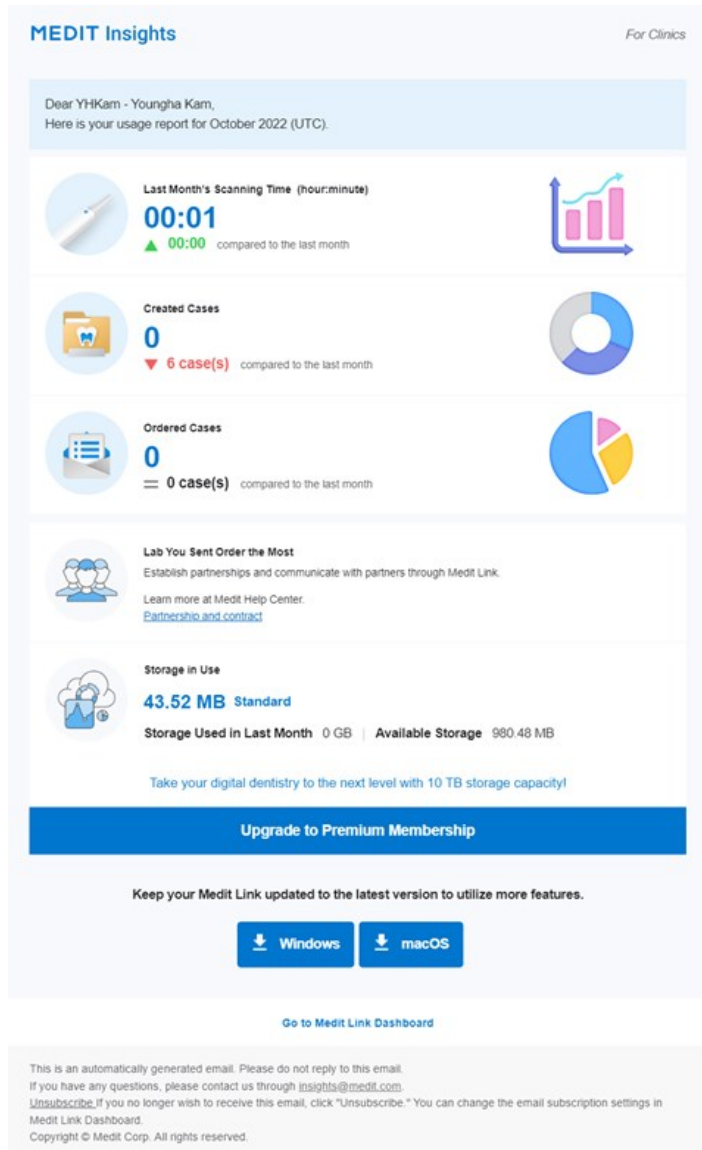

Banner	Medit fournit ici des conseils et des informations utiles. * Si vous ne voulez pas voir la bannière, décochez la case Accord de marketing et de promotion dans Mes infos > Mon compte.
Informations statistiques	Les informations statistiques sont affichées, telles que la durée de numérisation, les cas créés, le laboratoire avec le plus de commandes, etc.
Télécharger Medit Link	Le bouton fournit le lien de téléchargement de Medit Link.
Dashboard	Toutes les informations statistiques sont basées sur vos Informations Dashboard. Vous pouvez voir plus de détails dans le Dashboard.


Se désabonner de Medit Insights

Désactivez l'option "S'abonner à Medit Insights" dans le Dashboard ou cliquez sur "Se désabonner" dans l'e-mail reçu.

Patient

Vous pouvez gérer les cas en fonction du nom et de l'ID du patient.


Tous les patients enregistrés via l'application Medit Link sont affichés dans une liste, ce qui facilite la gestion des patients et de leurs cas.

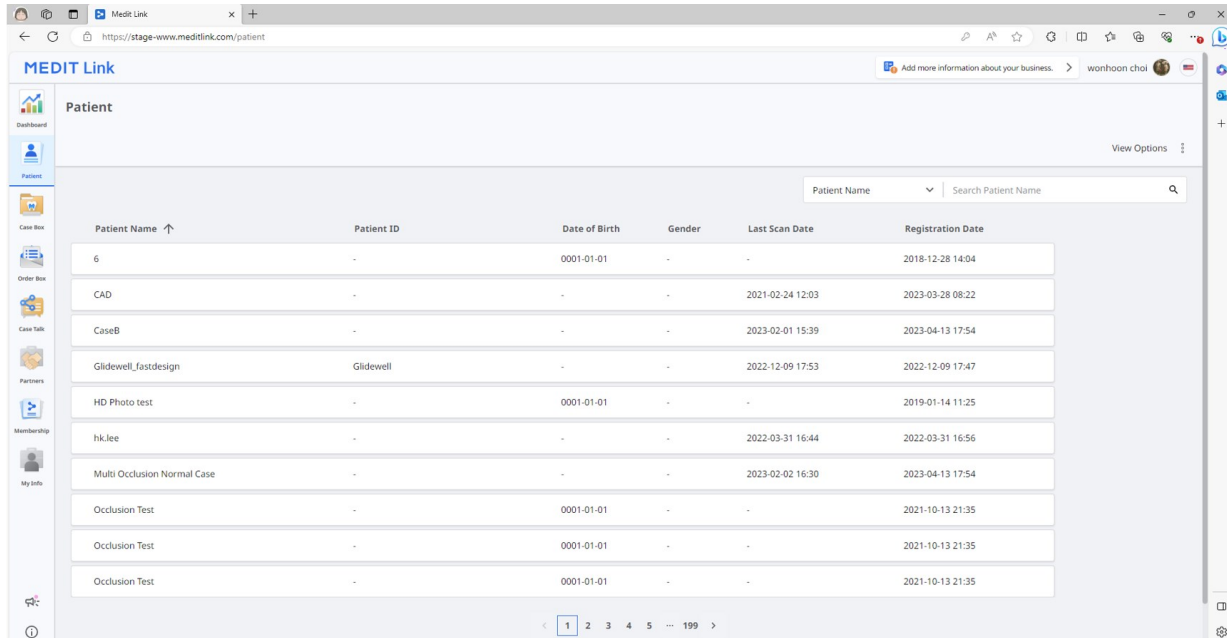

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Rechercher un patient

1. Sélectionnez vos critères de recherche entre Nom du patient et ID du patient dans le menu déroulant situé en haut à droite de la liste de patients.

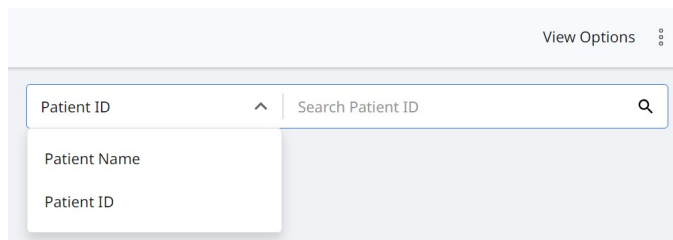

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Saisissez le nom du patient ou l'ID du patient à rechercher en fonction des critères de recherche sélectionnés.
3. Seuls les patients dont le nom ou l'ID a été saisi sont affichés dans la liste.

Case Box/Work Box


La Case Box (Clinique) ou Work Box (Laboratoire) affiche tous les cas que l'utilisateur a créés dans l'application Medit Link. Vous pouvez consulter les fichiers par l'intermédiaire d'un navigateur web sans avoir à installer un programme séparé.

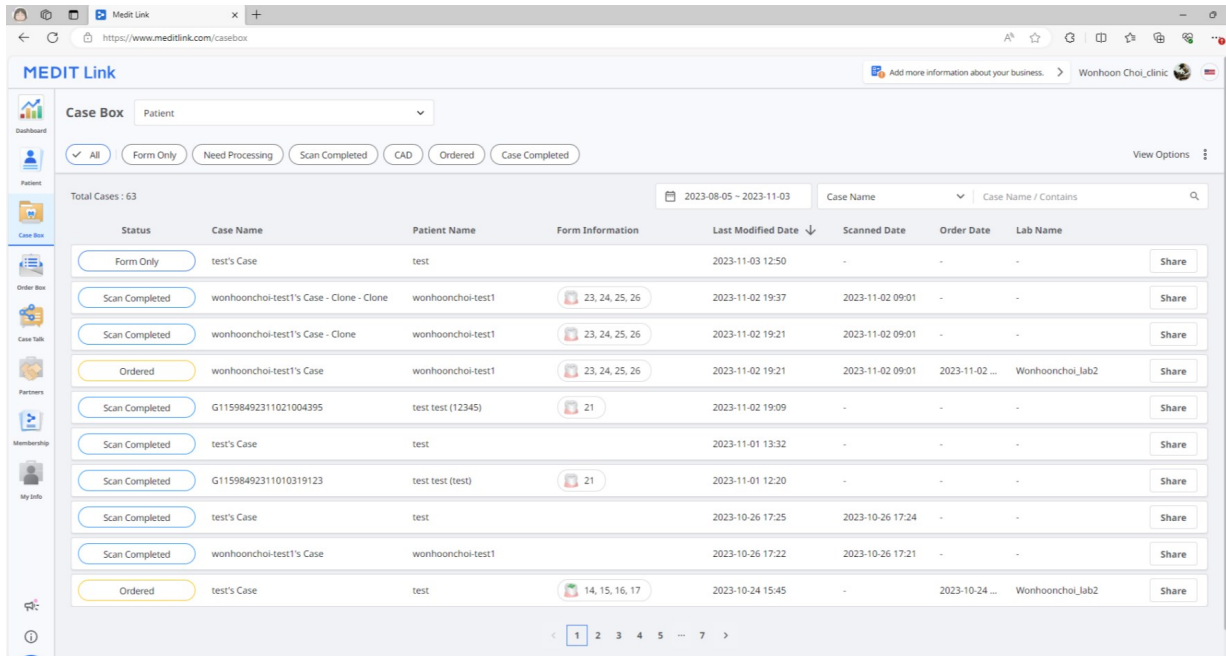


Filtrage des cas

Filtrage par patient

Vous pouvez filtrer les cas par patient. Il est utile lorsque vous recherchez des cas pour des patients spécifiques.

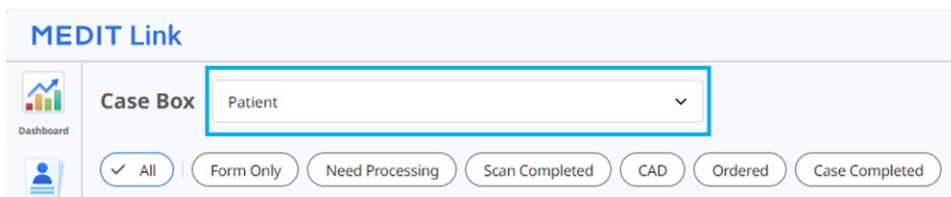

1. Saisissez le nom d'un patient dans le champ de recherche.

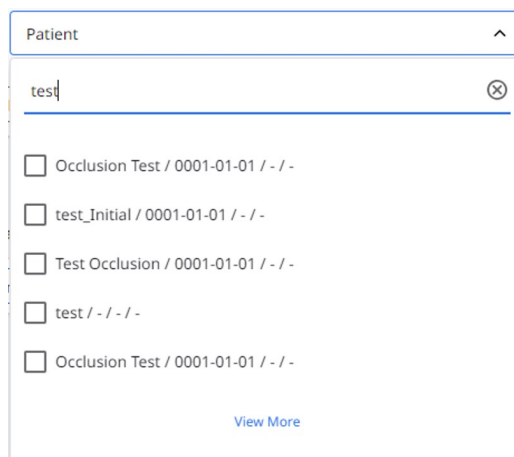

2. Sélectionnez un patient dans la liste des résultats de la recherche.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Seuls les cas des patients sélectionnés sont affichés dans la liste, ce qui facilite la recherche des cas sur lesquels vous souhaitez travailler.

MEDIT Link

Add more information about your business.
Woonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

☒ All
☐ Form Only
☐ Need Processing
☐ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

View Options

Total Cases: 63
2023-08-05 ~ 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

Filtrer par statut

Vous pouvez filtrer les cas en fonction de leur statut.

☐ All
☒ Form Only
☐ Need Processing
☒ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

- L'utilisateur peut cliquer sur le statut qu'il souhaite afficher. Le navigateur affichera uniquement les cas avec le statut choisi.
- L'utilisateur peut sélectionner plusieurs statuts à la fois.

Le type de statut suivant est fourni en fonction du type de compte :

Case Box (Clinique)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratoire)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrer par durée

Vous pouvez filtrer et afficher les cas qui ont été modifiés pour la dernière fois au cours de la période que vous avez définie.

1. Cliquez sur le filtre de durée.

2. Sélectionnez la gamme.

- Tout : Affiche tous les cas.
- Gamme personnalisée : Spécifiez des dates de début et de fin pour afficher les cas modifiés au cours de cette période.
- Aujourd'hui : Afficher les cas modifiés en dernier aujourd'hui.
- Hier : Affiche les cas modifiés pour la dernière fois à la date d'hier.
- 7 derniers jours : Affiche les cas modifiés pour la dernière fois au cours des 7 derniers jours, à l'exclusion d'aujourd'hui.
- 30 derniers jours : Affiche les cas modifiés pour la dernière fois au cours des 30 derniers jours, à l'exclusion d'aujourd'hui.
- 90 derniers jours : Affiche les cas modifiés pour la dernière fois au cours des 90 derniers jours, à l'exclusion d'aujourd'hui.
- Ce mois-ci : affiche les cas de ce mois-ci.
- Mois précédent : affiche les cas du mois précédent.

La liste des cas sera mise à jour en temps réel avec les cas créés ou modifiés en dernier pendant la durée sélectionnée.


Filtrer par recherche

Vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de recherche pour rechercher facilement et rapidement les informations requises.

Options de recherche basées sur le compte clinique/laboratoire :

Case Box (Clinique)	Nom du cas, Nom du patient, ID du patient, Nom du laboratoire
Work Box (Laboratoire)	Nom du cas, Nom du patient, Nom de la clinique, ID de commande

Détails du cas

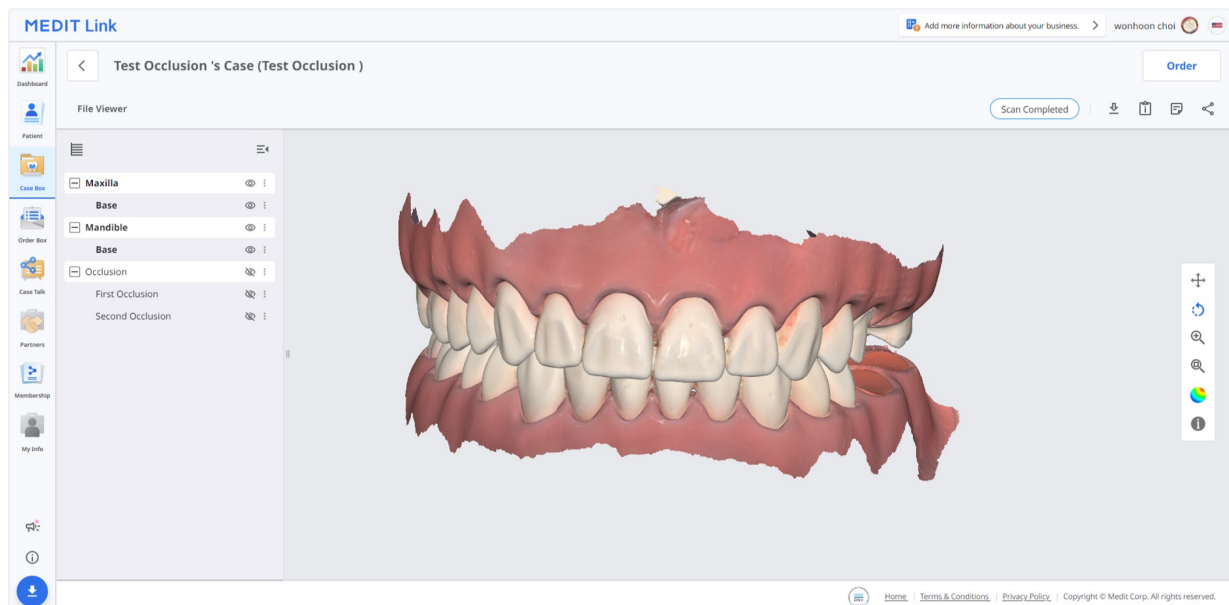

Les outils de gestion de cas suivants sont fournis dans Case Box/Work Box.

	Statut du cas	Affiche le statut du cas.
	Allez à Case Box/Order Box	Fournit un raccourci pour le même cas dans une autre box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Télécharger	Téléchargez les fichiers dans le cas sur le PC local.
	Renseignements sur le cas	Examinez les détails du cas et enregistrez-les au format PDF ou imprimez-les.
	Note et tags	Ajoutez une note ou des tags lors de l'enregistrement ou de la commande d'un cas. Utilisez-les pour communiquer à vos partenaires toute information supplémentaire ou complémentaire sur le cas.
	Partager	Créer un lien pour le partage. Les utilisateurs du lien partagé peuvent accéder aux données 3D dans un navigateur tel que Chrome, Firefox ou Safari sans installer de programmes supplémentaires.

Order Box/In Box

Order Box (Clinic) ou In Box (Lab) affiche les cas commandés dans l'application Medit Link.

Détails de la commande

The screenshot shows the 'Occlusion Test's Case' interface in the Medit Link application. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains the 'MEDIT Link' logo, a navigation bar with 'Order' and 'File Viewer' tabs, and a 'Cancel Order' button.
- Left Sidebar:** Contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Tab, Partners, Membership, and My Info.
- Main Content Area:** Displays the 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)' form. It includes fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanned Date, Order Date (2023-04-20 PM 02:08), Requested Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15), Expected Delivery Date (2023-04-27 AM 08:15), and a Memo field.
- Right Sidebar:** Displays the 'Order List' table, which shows the details of the ordered items.

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None
24	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None
25	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None
26	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None

- | | |
|---|--|
| 1 | Affiche le nom du cas et le nom du patient. |
| 2 | Fournit des fonctions de gestion des commandes (accepter/annuler ; livrer/réceptionner). |
| 3 | Affiche les onglets disponibles : Commande, Visualiseur de fichiers |
| 4 | Affiche les fonctions de gestion des cas et des dossiers : statut du cas, raccourcis pour des informations détaillées, renseignements sur le cas, note et tags, etc. |
| 5 | Affiche les informations détaillées de la commande, notamment le numéro de commande, le nom du patient, le nom du partenaire, la date de numérisation, la date de commande, la date de livraison et les notes et tags. |
| 6 | Affiche les informations sur le produit commandé et le statut de la livraison. |


Onglets dans Order Box/In Box

Commande	Visualiseur de fichiers
Vérifiez les informations détaillées de la commande, telles que l'ID de la commande, le nom du patient, le nom du compte, la date de numérisation, la date de commande, la date de livraison, la note et les tags.	Visualiser les fichiers générés par les opérations de scan/CAD. Le visualiseur de fichiers affiche et gère les modèles 3D et les images 2D acquis ou attachés.

Case Talk

Les cas créés dans le Medit Link peuvent être partagés avec des personnes en particulier que vous désignez, avec toute personne disposant du lien de partage ou avec les membres enregistrés de Medit Link.

L'utilisateur peut voir une liste de tous les cas partagés via "Case Talk" dans Medit Link App et Medit Link Web.

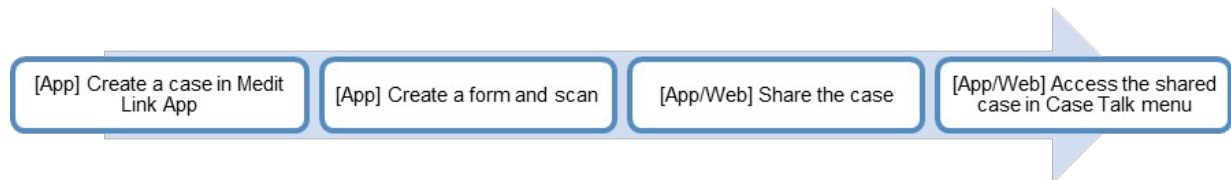

Les cas partagés peuvent être visualisés via un navigateur Web sans installer de programme séparé, ce qui permet une communication facile sur les données 3D sur divers appareils.

Créer un Case Talk

Vous pouvez créer un lien partagé vers un cas qui a été créé dans Case Box / Work Box.

1. Trouvez un cas que vous souhaitez partager et cliquez sur le bouton "Partager" à droite.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area displays a table of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table shows 63 total cases, with the first few rows having status labels like 'Form Only', 'Scan Completed', and 'Ordered'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.

Share through Case Talk

File List

Maxilla

Base

Mandible

Base

Occlusion

First Occlusion

Second Occlusion

Face Scan Data

meditMesh

meditMesh

meditMesh

meditMesh

meditMesh

meditMesh

3,449KB

2,926KB

662KB

611KB

6 items selected.

15.23MB/200 MB

Share With

Share with Anyone

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

- Définir le type d'autorisation de partage et les options de partage.
- Cliquez sur "Obtenir le lien" pour créer un lien partagé.

Définition du type d'autorisation de partage et des options de partage

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

Allow comments

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

30

Partager avec	• Partager avec quiconque Crée un lien partagé. Vous pouvez partager les fichiers avec quiconque. • Partager avec des personnes en particulier Crée et envoie un lien partagé à des personnes spécifiques.
Partager via	Si vous sélectionnez "Partager avec des personnes en particulier", vous pouvez partager le lien avec des personnes spécifiques de différentes manières. • Adresse e-mail • Texto • Partenaires
Date d'expiration	Définissez la date d'expiration du lien. Après l'expiration du lien, les personnes avec lesquelles vous l'avez partagé n'auront plus accès aux fichiers. Vous pouvez prolonger la période d'expiration jusqu'à 90 jours à compter d'aujourd'hui.
Code PIN	Définissez un code d'accès à 6 chiffres pour assurer la sécurité des données.
Partager le nom du patient	Si vous cochez cette option, toutes les personnes disposant du lien verront le nom du patient.
Autoriser le téléchargement	Si vous cochez cette option, tous les utilisateurs disposant du lien peuvent télécharger les fichiers.
Autoriser les commentaires	• Si vous cochez cette option, vous pourrez communiquer par le biais du lien partagé. • Si vous décochez l'option, le destinataire ne pourra voir que vos commentaires, mais ne pourra pas ajouter les siens.
Commentaire	Vous pouvez laisser un message dans la section des commentaires.

Détails Case Talk

Vous pouvez voir les fichiers dans le cas partagé. Les fonctions suivantes sont disponibles sur la page de détails de Case Talk.

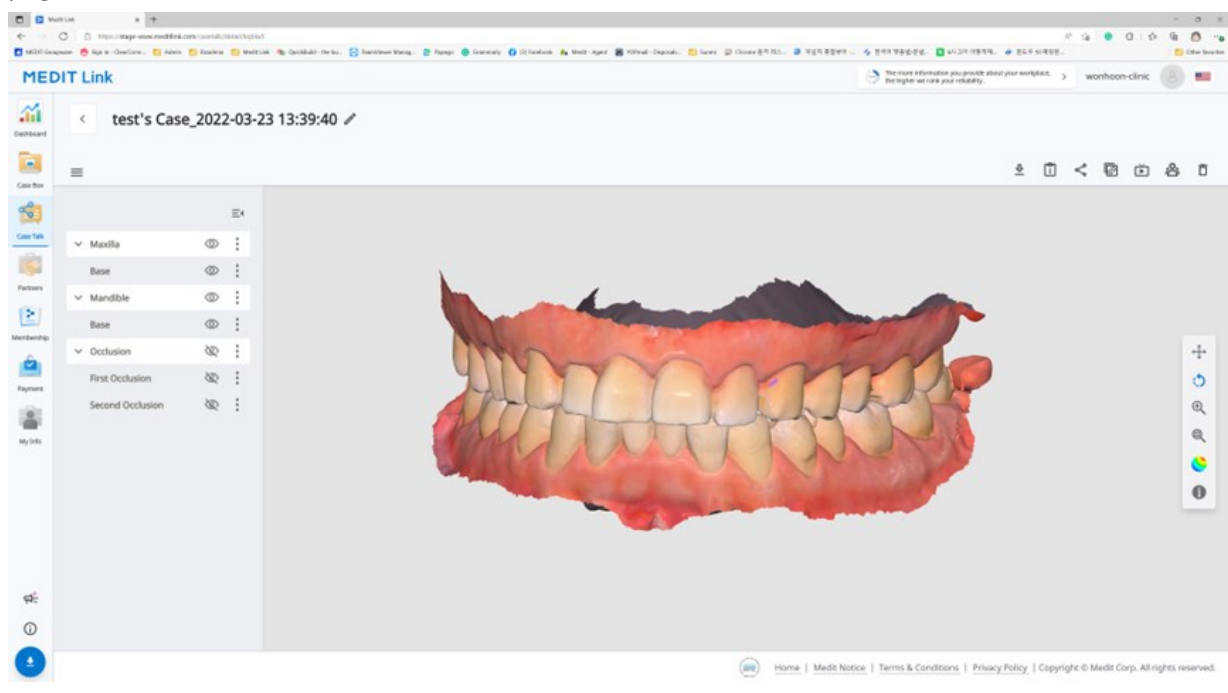

	Télécharger	Téléchargez tous les fichiers du cas sur le PC local.
	Renseignements sur le cas	Afficher des informations détaillées sur le cas.
	Partager	Modifier le paramètre de partage.
	Copier le lien	Copiez le lien partagé dans le presse-papiers. Le lien copié affiche les fichiers partagés sur votre navigateur Web.
	Direct	Partagez votre écran avec les utilisateurs connectés. Le partage d'écran est synchronisé avec les utilisateurs connectés.
	Participants	Afficher tous les utilisateurs qui accèdent au lien partagé.
	Supprimer	Supprimer le lien partagé. Le lien partagé supprimé n'est plus accessible.

Note


Les services suivants ne sont pas disponibles sur Medit Link China.

- Direct
- Participants

Web Viewer

Vous pouvez consulter les données partagées via Case Talk dans un navigateur web.

Il est possible de communiquer avec les personnes qui ont accès au lien à l'aide d'annotations et de commentaires.

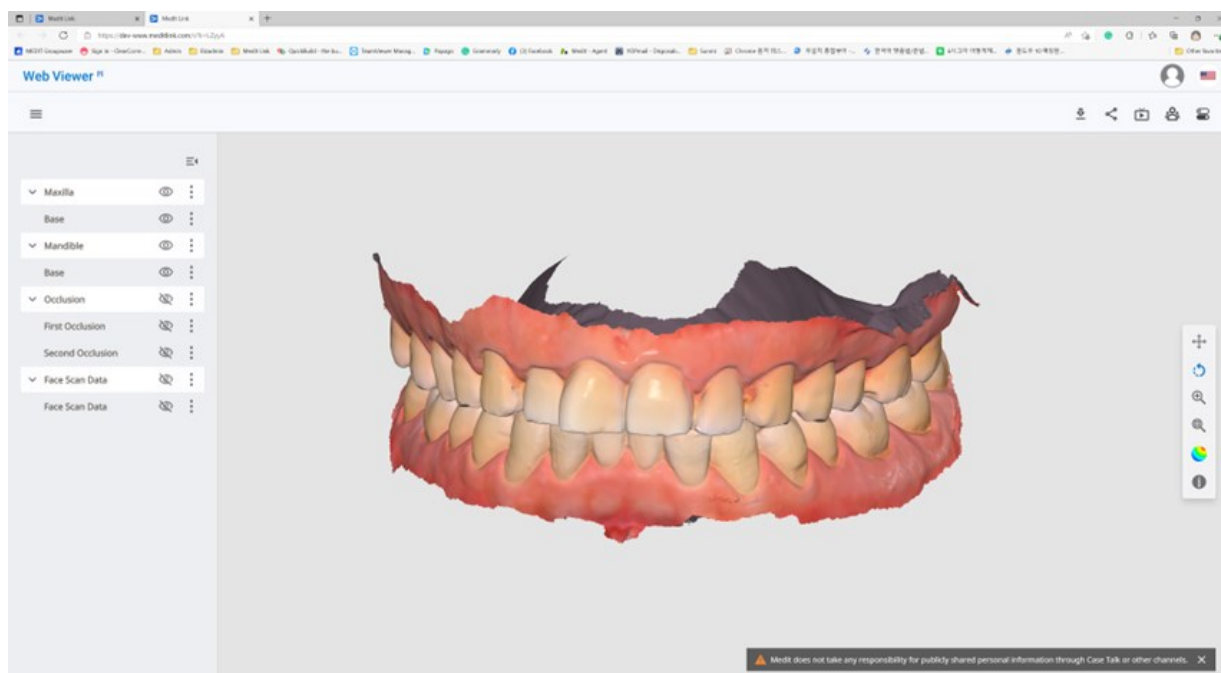

	Télécharger	Télécharger tous les fichiers de ce cas sur le PC.
---	-------------	--

	Renseignements sur le cas	Afficher des informations détaillées sur le cas.
	Partager	Modifier les paramètres de partage.
	Direct	Partagez votre écran avec les utilisateurs connectés. Le partage d'écran est synchronisé avec les utilisateurs connectés.
	Participants	Afficher tous les utilisateurs connectés au lien partagé.
	Étiquetage des dents	Permet de modifier le système de numérotation des dents.


Note

Les services suivants ne sont pas disponibles sur Medit Link China.

- Direct
- Participants

Annotation

Vous pouvez ajouter des annotations à un emplacement spécifié sur le modèle 3D. Toute personne disposant du lien peut consulter les annotations que vous ajoutez.

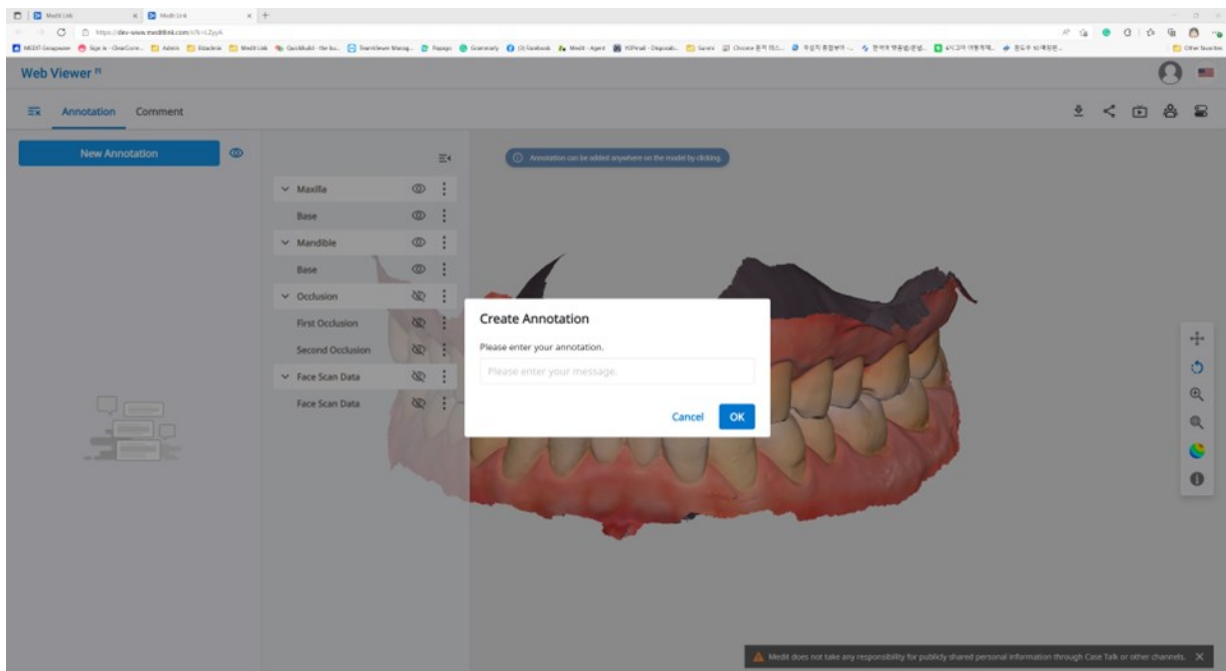


Note

Le service suivant n'est pas disponible sur Medit Link China.

- Annotation

1. Trouvez l'icône de menu dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'onglet "Annotation". Utilisez le bouton "Nouvelle annotation" pour ajouter une annotation n'importe où sur les données en un clic.
2. Saisissez le message, puis cliquez sur "OK" pour l'enregistrer.

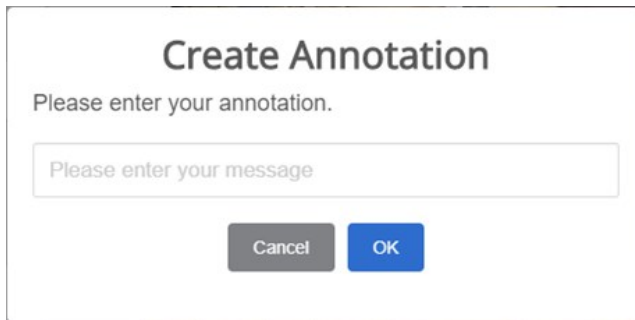


Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

3. Vous pouvez utiliser les annotations comme un simple canal de communication. Cliquez sur l'annotation créée pour saisir une réponse et cliquez sur "Envoyer".

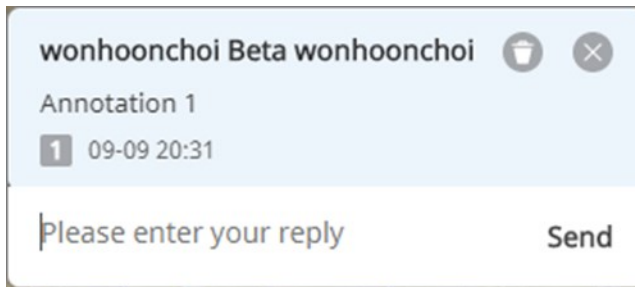

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Commentaires

Vous pouvez communiquer avec les utilisateurs qui ont accès au lien via l'onglet "Commentaire" du menu du Web Viewer.



Le service suivant n'est pas disponible sur Medit Link China.

- [Commentaire](#)

Partage d'écran en temps réel


Vous pouvez partager votre écran en temps réel.



Le service suivant n'est pas disponible sur Medit Link China.

- [Direct](#)

1. Cliquez sur "Direct" pour partager l'écran de votre Web Viewer avec les utilisateurs connectés.

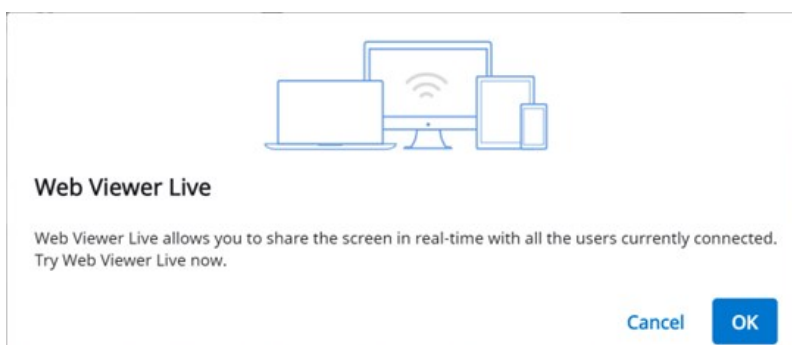

Web Viewer Live

Web Viewer Live allows you to share the screen in real-time with all the users currently connected. Try Web Viewer Live now.

Cancel OK



2. Cliquez sur "OK" pour commencer à partager votre écran.
3. Les autres personnes qui ont accédé au lien doivent accepter le partage d'écran.

4. L'écran de l'utilisateur qui a initié le partage d'écran est affiché en synchronisation avec l'écran de la personne qui a reçu la demande.


Arborescence des données


Toutes les données sont regroupées et affichées en fonction de leurs attributs dans l'arborescence des données. Vous pouvez afficher ou masquer des données, ajuster l'opacité, etc.

Contrôles de l'arborescence des données

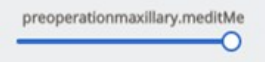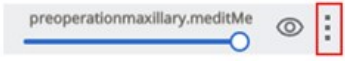Afficher / Masquer	Cliquez sur l'icône "œil" pour afficher ou masquer les données de l'écran. Contrôlez la visibilité des données en tant que groupe ou fichier individuel.
Opacité	Passer la souris sur un élément visible pour faire apparaître le curseur d'opacité. Régler le curseur pour modifier la transparence de vos données. 
Menu étendu	Le menu étendu se trouve à droite de chaque élément de l'Arborescence des données. Il comprend les options suivantes :  • Afficher ceci uniquement : Masquer toutes les autres données à l'exception de celle en cours. • Masquer : masque les données actuelles.

Contrôles du modèle 3D

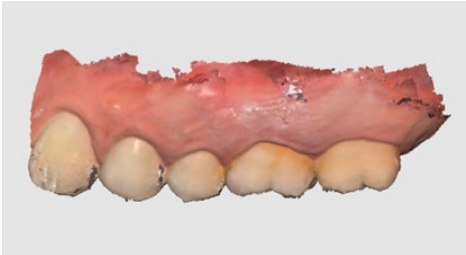	Panoramique	Déplacer le modèle.
	Pivoter	Pivoter le modèle.
	Zoom avant/arrière	Zoom avant et arrière sur le modèle.
	Ajustement du zoom	Positionne le modèle au centre de l'écran.
	Mode d'affichage	Affiche les données dans des couleurs de texture réelles. 

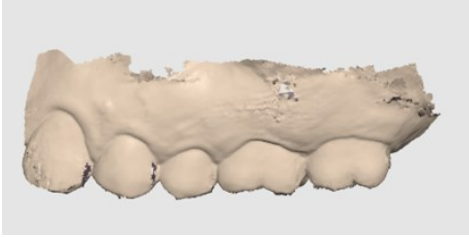	du modèle	Texture désactivée	Affiche les données dans une seule couleur. 
---	----------------------	-------------------------------	---

Partners

Vous pouvez rechercher des partenaires potentiels pour demander un partenariat et consulter la liste des partenaires actuels.




Les services utilisant Google Maps ne sont pas disponibles sur Medit Link China.

Recherche de partenaires


Vous pouvez rechercher des utilisateurs de Medit Link en fonction de leur raison sociale et/ou de leur adresse.

Dans les résultats de la recherche, vous pouvez envoyer une demande de partenariat à une entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler.

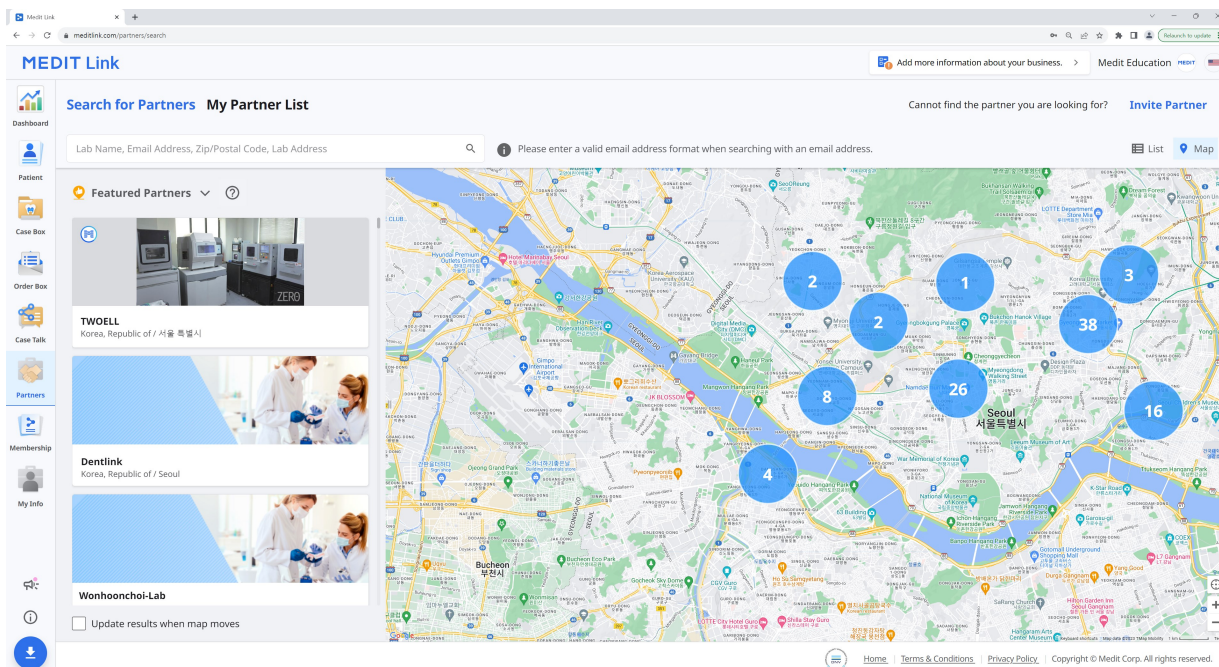

Ma liste de partenaires

Vous pouvez consulter vos partenariats actuels avec toutes vos entreprises partenaires existantes dans Ma liste de partenaires.

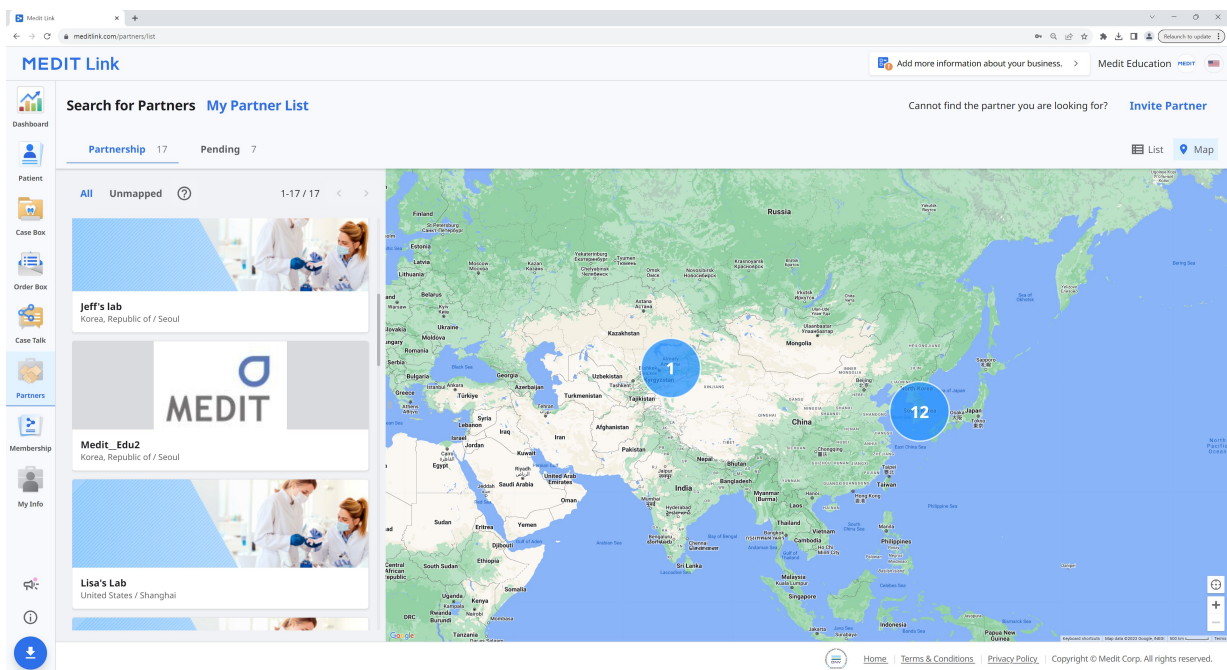

Invitation de partenaire

Si vous avez une clinique ou un laboratoire avec lequel vous souhaitez travailler, vous pouvez les inviter à rejoindre Medit Link. Le partenariat sera automatiquement formé une fois l'invitation acceptée.

1. Cliquez sur "Inviter un partenaire" en haut à gauche de votre écran.
2. Saisissez l'adresse e-mail d'une entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler et envoyez-lui une invitation avec une demande de partenariat.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Une fois que l'organisation invitée accepte l'invitation et s'inscrit à Medit Link, le partenariat est automatiquement établi.

Membership

La politique d'adhésion de Medit Link vise à établir un environnement numérique plus étendu, s'étendant progressivement pour fournir divers services basés sur la plate-forme cloud.

Nous visons à offrir à nos clients une expérience plus cohérente et personnalisée avec notre nouvelle politique d'adhésion.

Il existe deux plans d'adhésion :

Standard

- Plan standard gratuit pour tous les utilisateurs inscrits
- 1 GB de stockage en ligne
- Pour les nouveaux utilisateurs

Premium

- Forfait payé
- 10 TB de stockage en ligne
- Pour les utilisateurs ayant de nombreux cas et des données variées
- Essai gratuit d'un mois

	Standard	Premium
Stockage cloud	1 GB	10 TB
Frais mensuels	Gratuit	0.99\$/mois
* Le stockage cloud ne calcule pas l'espace occupé par les données brutes.		

Note

Les forfaits d'adhésion seront disponibles sur Medit Link China. Vous pouvez obtenir le forfait Premium gratuitement jusqu'à la sortie officielle de la fonctionnalité.

Adhésion

The screenshot displays the Medit Link membership interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership (selected), and My Info. The main content area is divided into two sections. The 'My Plan' section features an illustration of a person using a smartphone and a cloud icon, with the text 'Standard Free'. Below this, it lists benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is at the bottom right of this section. The 'Cloud Storage' section shows a progress bar for 558.87 MB / 1 GB. It includes a 'Set Period' dropdown set to '2018-01-01 ~ 2023-11-01' and buttons for 'All', '1 Week Ago', '1 Month Ago', '6 Months Ago', and '1 Year Ago'. Below the progress bar, there are checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (27.50 GB), and 'Result Files & Attachments' (558.87 MB). A 'Delete' button is also present. At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Home', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and a copyright notice for Medit Corp.

Mon plan

Dans la section de gauche, vous pouvez voir votre abonnement actuel. Vous pouvez également modifier le statut de votre abonnement à tout moment.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Subscribe

Stockage cloud

Dans la section de droite, vous pouvez gérer votre stockage sur le cloud.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07 All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago



☐ Total Selected 0.00 KB Delete

☐	Raw Data Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	147.52 GB
☐	Result Files & Attachments Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	13.74 GB

Définir la période	Permet de définir la période spécifique pour la suppression des données créées au cours de cette période. • Tout : voir tous les fichiers. • Il y a 1 semaine : consultez les fichiers dont la création date d'une semaine. • Il y a 1 mois : consultez les fichiers dont la création date d'un mois. • Il y a 6 mois : consultez les fichiers dont la création date de six mois. • Il y a 1 an : consultez les fichiers dont la création date d'une année.
Données brutes	Les données brutes n'occupent pas d'espace dans le stockage en ligne, elles ne figureront donc pas dans le graphique pi. Mais vous pouvez gérer les données brutes à partir d'ici si nécessaire, par exemple en les supprimant pour protéger les informations privées du patient.
Résultats et pièces jointes	Le résultat et les fichiers joints occupent de l'espace dans le cloud. Si le cloud est plein, vous pouvez obtenir plus d'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles.
Supprimer	Supprimez les fichiers sélectionnés du stockage en ligne pour libérer de l'espace.

S'abonner

Si vous êtes actuellement sur le plan Standard ou le plan Premium avec un code promotionnel, vous pouvez souscrire à l'abonnement Premium.

Le paiement est effectué par le biais du service Stripe (www.stripe.com).

1. Cliquez sur le bouton "S'abonner".

The screenshot shows the 'MEDIT Link' membership page. On the left, a sidebar lists navigation options: Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership (selected), and My Info. The main content area is titled 'My Plan' and displays the 'Standard' plan, which is 'Free'. It lists benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is at the bottom right. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a donut chart indicating '558.87 MB / 1 GB' usage. Below the chart, there are checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (27.50 GB), and 'Result Files & Attachments' (558.87 MB). A 'Delete' button is also present.

2. Vérifiez la description du plan Premium et cliquez à nouveau sur "S'abonner".

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. Vérifiez le prix et les conditions, puis saisissez les informations nécessaires au paiement. Ensuite, cliquez sur "S'abonner".

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Le paiement peut prendre quelques secondes. Une fois l'opération terminée, le message de confirmation s'affiche.

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close


Se désinscrire

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Après votre désinscription, vous pourrez encore utiliser l'abonnement Premium pour les jours restants du mois payé. Votre forfait sera remplacé par le forfait Standard à partir du prochain jour de paiement et le stockage en ligne sera limité à 1 GB. Si la capacité de stockage dans le cloud est dépassée, les fichiers ne seront pas sauvegardés et les fonctions de commande et de partage ne seront plus disponibles.

1. Cliquez sur "Se désinscrire".

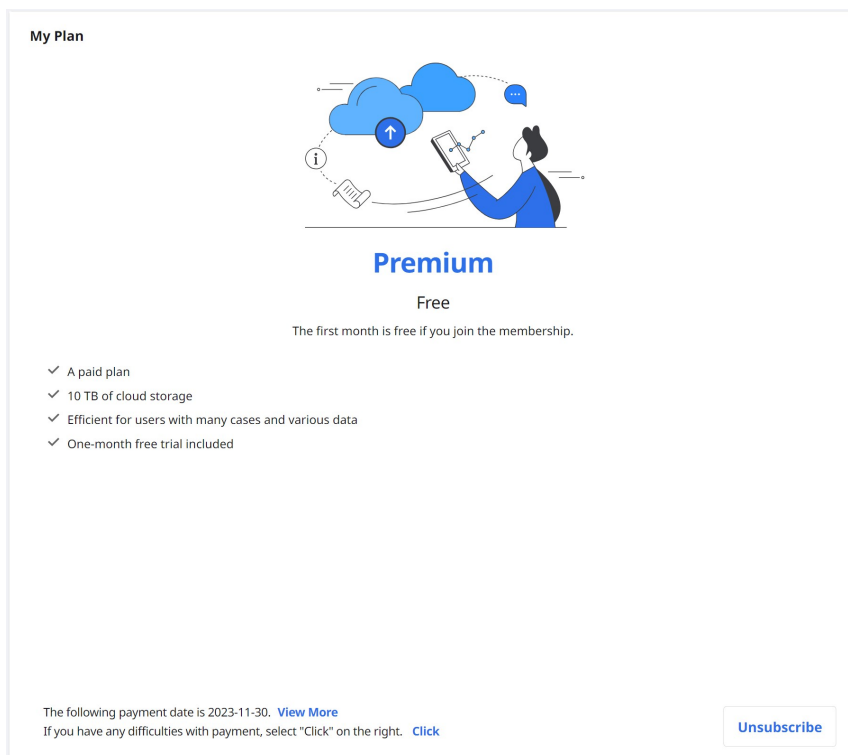

2. Cliquez sur "Annuler l'abonnement".

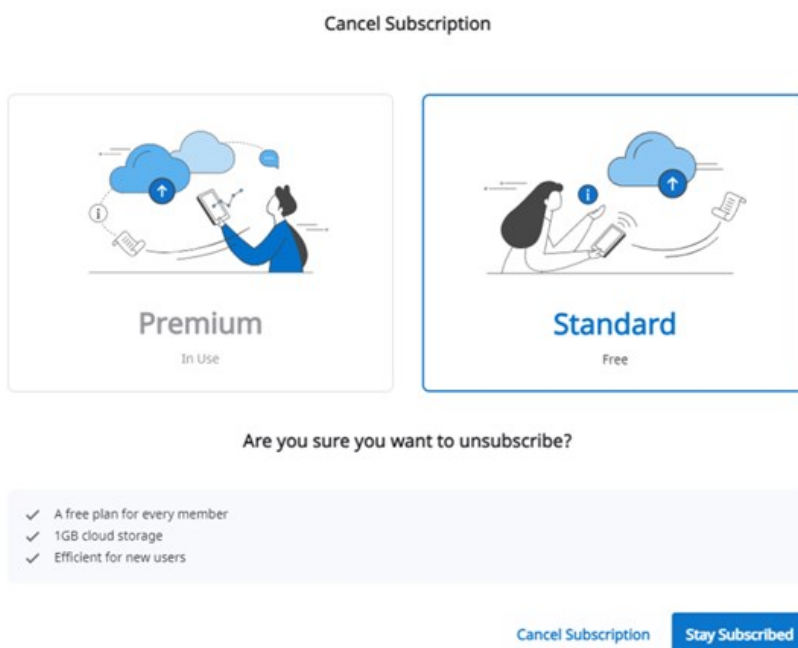

3. Pour confirmer que vous souhaitez vous désabonner, cliquez à nouveau sur "Annuler l'abonnement" dans la nouvelle fenêtre contextuelle.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Votre abonnement a été annulé.
5. Votre forfait sera remplacé par le forfait Standard à partir du prochain jour de paiement et le stockage en ligne sera limité à 1 GB. Si la capacité de stockage dans le cloud est dépassée, les fichiers ne seront pas sauvegardés et les fonctions de commande et de partage ne seront plus disponibles.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Informations de facturation

Vous pouvez consulter l'historique des paiements pour les abonnements d'adhésion, y compris une facture pour chaque paiement. Vous pouvez également ajouter ou modifier le mode de paiement, qui sera appliqué à partir du prochain paiement programmé.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan: Premium

Amount: 0.99 \$ USD / Monthly

Next Payment Date: 2021-09-09

Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Comment ajouter un mode de paiement

1. Cliquez sur "Modifier le mode de paiement".

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99 USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa ****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Cliquez sur "Ajouter un mode de paiement".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD


 **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Entrez les informations requises et cliquez sur "Ajouter".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. La méthode de paiement nouvellement ajoutée sera définie comme méthode par défaut et utilisée pour le prochain paiement.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Comment modifier un mode de paiement

1. Cliquez sur l'icône du menu déroulant à côté du mode de paiement que vous souhaitez modifier dans la fenêtre de dialogue de facturation.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

Visa **** 5556 Default Expires 11/2021 ✕

Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Cliquez sur "Par défaut" pour définir la carte sélectionnée comme mode de paiement par défaut.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Utiliser un code promotionnel

Enregistrez le code promotionnel fourni dans le cadre de la promotion. Vous pouvez utiliser un abonnement Premium avec un code promotionnel.

Enregistrer code promotionnel

1. Saisissez le code promotionnel et cliquez sur "S'inscrire".

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30 Wonhoon-TestRedeem		Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

1

2. Lisez l'avis et choisissez "Enregistrer" ou "Appliquer" dans la boîte de dialogue contextuelle.
 - Enregistrer: Enregistrer le code promotionnel. Vous pouvez activer et utiliser le code promotionnel plus tard après l'enregistrement.
 - Appliquer : Enregistrer et activer le code promotionnel. La réduction promotionnelle s'applique immédiatement.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Activation du code promotionnel

Vous pouvez enregistrer plusieurs codes promotionnels, mais vous devez activer celui que vous souhaitez utiliser.

1. Cliquez sur le bouton "Activer" à côté du code que vous souhaitez utiliser.
 - S'il n'y a pas de code avec le statut "Activated", celui que vous choisissez sera appliqué immédiatement.
 - Si un code déjà activé existe, le nouveau code sélectionné passe au statut "Waiting". Lorsque le code promotionnel actuellement actif expire, le nouveau code promotionnel avec le statut "Waiting" est automatiquement activé.

Note

Un seul code promotionnel peut être activé et un seul peut être en statut "Waiting".

My Info

Mon compte

Vous pouvez consulter et modifier les informations que vous avez fournies lors de votre inscription et vérifier le statut de votre abonnement.

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name

wonhoon choi

Language

한국어 (대한민국)

Country

Korea, Republic of

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

Subscribe

Ma clinique/Mon laboratoire (compte Administrateur uniquement)

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

[Add more information about your business.](#)

[seolahjeon](#)

Dashboard

My Account

My Clinic

My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ①	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ①	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home
 [Terms & Conditions](#)
[Privacy Policy](#)
 Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Autres menus

Avis et mise à jour

Vous pouvez consulter les avis importants de Medit et les mises à jour du logiciel Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informations Medit

Vous pouvez obtenir diverses informations sur l'utilisation de Medit Link. Accédez aux ressources éducatives et informatives de Medit, telles que Medit Academy, Medit Academy YouTube et le Centre d'aide Medit.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


[Télécharger l'application Medit Link](#)

51

Vous pouvez télécharger la dernière version du programme d'installation sur le web. Ce menu est utile lorsque vous avez perdu le programme d'installation fourni dans l'emballage du produit ou que vous avez un programme d'installation obsolète.

 Note

Medit Link se met à jour automatiquement lorsque vous disposez d'une connexion Internet.

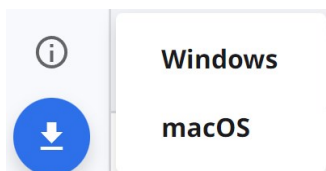

Vue d'ensemble

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Barre de titre	Consultez l'application Medit Link > Barre de titre pour obtenir des informations détaillées.
2	Menu	Consultez l'application Medit Link > Menu pour obtenir des informations détaillées.
3	Outils et fonctions	Consultez l'application Medit Link > Visualiseur de fichiers et application Medit Link > Options de visualisation pour des informations détaillées.
4	Liste de cas	Consultez l'application Medit Link > Filtrage et recherche pour des informations détaillées.

Le tableau ci-dessous résume les menus disponibles dans chaque type de compte de clinique et de laboratoire.

Type de compte		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Comptes clinique	Admin	O	O	O	X	X	O	O	O
	Membre	O	O	X	X	X	O	O * Fonction de restauration uniquement	O
Comptes laboratoire	Admin	X	X	X	O	O	O	O	O
	Membre	X	X	X	X	O	O	O * Fonction de restauration uniquement	O

Barre de titre

La barre de titre permet d'accéder rapidement à des fonctions telles que les données du compte, les notifications, les avis et les mises à jour, les paramètres et l'état du réseau.



Mes informations

Mes informations contient des informations de base sur l'utilisateur telles que l'image de profil, le nom de la clinique ou du laboratoire, l'adresse e-mail et le nom d'utilisateur.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Notifications

Vous pouvez consulter les notifications relatives aux partenariats, aux commandes et aux processus de travail.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Cochez la case pour n'afficher que les messages non lus. |
| 2 | Cliquez sur une notification pour accéder instantanément au cas ou à la page web qui s'y rapporte. |

Avis et mise à jour

Vous pouvez consulter les avis importants de Medit et les mises à jour du logiciel Medit.

Paramètres

La boîte de dialogue Paramètres permet aux utilisateurs de configurer le programme.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Veuillez vous référer à [Medit Link App > Paramètres](#) pour avoir des informations détaillées sur les options de paramétrage.

Statut du réseau

Medit Link vous permet d'utiliser toutes les fonctions de manière fluide lorsque vous êtes connecté à un réseau.

Pour vous aider à vérifier l'état de votre connexion réseau en temps réel, l'icône statut du réseau s'affiche dans la barre de titre.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Si la connexion au réseau n'est pas bonne, vous pouvez rencontrer les restrictions suivantes :

- Certaines fonctions seront restreintes, comme la commande d'un cas, la création d'un cas, le partage via Case Talk et la synchronisation cloud.
- Les performances globales du service peuvent être réduites en raison de l'impact de l'environnement réseau.

Dans ce cas, vous pouvez entrer en mode hors ligne pour effectuer des tâches de base, puis utiliser les fonctionnalités qui nécessitent Internet une fois que vous êtes connecté.

 Note

Le symbole du réseau indique la vitesse de réponse entre la zone actuelle et AWS (Amazon Web Service). Il ne s'agit pas de la vitesse de votre réseau, de sorte qu'il peut arriver que l'état soit médiocre ou mauvais, même si la vitesse de votre réseau est suffisante.

Si l'autre processus utilise le même réseau, la vitesse peut être faible ou mauvaise, et les performances globales de Medit Link peuvent être mauvaises. Dans ce cas, veuillez ne pas partager le réseau avec d'autres processus.

Par exemple, la fonction "Téléverser données brutes" représente une part importante du processus réseau. Si le symbole indique un statut médiocre ou mauvais, allez dans Paramètres > Téléverser données brutes et désactivez l'option "Téléverser automatiquement".

Paramètres

Général

Fournit des options pour la configuration globale du système.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

☒ Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Apply

Close

Enregistrer le dossier	Spécifiez un dossier pour stocker les résultats des données générées par Medit Link et les programmes connectés.	
Paramètres des langues	Sélectionnez la langue du programme.	
Étiquetage des dents	Sélectionnez un système de numérotation des dents entre FDI et US.	
Notifications	Si cette option est cochée, vous recevrez des notifications pour les mises à jour du programme.	
Téléverser des données brutes	Lorsque cette option est cochée, les données brutes sont automatiquement téléversées dans le cloud. Cela permet de sauvegarder les données originales et d'effectuer une numérisation transparente lors de l'utilisation de Medit Link avec le même compte sur un autre PC. La sauvegarde sur le cloud des données originales ne s'applique qu'aux données acquises dans Medit Scan for Clinics.	
Scan rapide	Choisissez si vous souhaitez que les étapes de numérisation ci-dessous apparaissent automatiquement dans Medit Scan for Clinics sans avoir à remplir les informations du formulaire. • Pré-op pour maxillaire • Pré-op pour mandibule • Numérisation du visage	
	Rendu avancé	Lorsque cette option est cochée, le modèle 3D est affiché avec un rendu plus vif et plus réaliste.

Options de visualisation	Ajuster la texture de la couleur	Régler la luminosité du modèle 3D. * Les couleurs obtenues peuvent légèrement différer de celles de Medit Link lorsque vous ouvrez les mêmes données avec d'autres logiciels.
Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur Medit	Rejoignez le Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur Medit. - Nous utilisons les informations collectées pour améliorer nos produits et services. - Nous ne collectons aucune information permettant d'identifier les individus.	
Page par défaut après la connexion	Sélectionnez le menu par défaut à afficher au démarrage du programme. - Les comptes clinique peuvent choisir entre Patient et Case Box - Les comptes laboratoire peuvent choisir entre In Box et Work Box	

Gestion du stockage

Permet de vérifier et gérer l'espace de stockage local et dans le cloud.

Définir la période

Permet de définir la période spécifique pour supprimer les données créées dans la période ci-dessous.

- Tout : voir tous les fichiers.
- Il y a 1 semaine : consultez les fichiers dont la création date d'une semaine.
- Il y a 1 mois : consultez les fichiers dont la création date d'un mois.
- Il y a 6 mois : consultez les fichiers dont la création date de six mois.
- Il y a 1 an : consultez les fichiers dont la création date d'une année.

Stockage local

Gérer l'espace de stockage du PC.

Données brutes	Retirer les données brutes sélectionnées du PC. Si les données brutes sont déjà téléversées dans le cloud, vous pouvez les télécharger et les utiliser quand vous le souhaitez.
Résultats et pièces jointes	Permet de supprimer le résultat et les fichiers joints du PC, tels que le maillage, les images et les vidéos. Si ces fichiers sont déjà téléchargés sur le cloud, vous pouvez les télécharger et les utiliser quand vous le souhaitez.
Autres	Voir les fichiers utilisés pour faire fonctionner le système et d'autres programmes. Il indique l'espace de stockage de votre PC. Vous ne pouvez pas supprimer ces fichiers de Medit Link.
Supprimer	Supprime les fichiers sélectionnés du PC.


Stockage cloud

Permet de gérer l'espace de stockage cloud.

Données brutes	Les données brutes n'occupent pas d'espace dans le stockage en ligne, elles ne figureront donc pas dans le graphique pi. Mais vous pouvez gérer les données brutes à partir d'ici si nécessaire, par exemple les supprimer pour protéger les informations privées du patient, etc.
Résultats et pièces jointes	Le résultat et les fichiers joints occupent de l'espace dans le stockage cloud. Si le cloud est plein, vous pouvez obtenir plus d'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles.
Acheter du stockage	Si vous bénéficiez d'une formule Standard, souscrivez à la formule Premium pour augmenter votre stockage dans le cloud.
Supprimer	Supprime les fichiers sélectionnés du stockage cloud pour libérer de l'espace de stockage.

Définir le programme connecté

Gérer les programmes qui soutiennent l'intégration dans Medit Link.

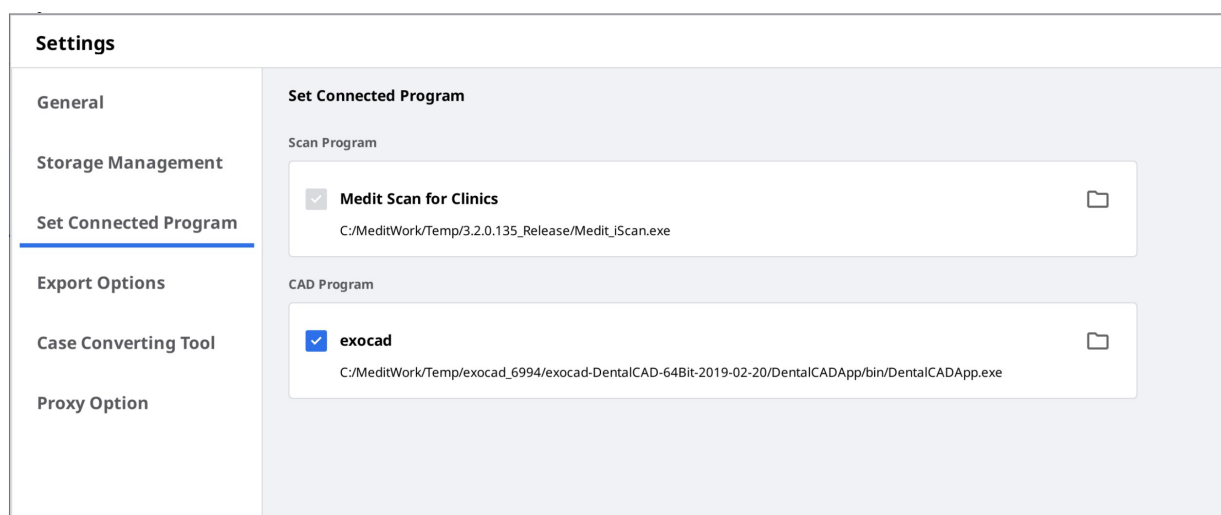

Vous pouvez connecter les programmes suivants :

	Compte clinique	Compte laboratoire
Programme de scan	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Programme CAD	exocad	exocad
---------------	--------	--------



L'intégration des services suivants n'est pas disponible pour Medit Link pour Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Options d'exportation

Définit la manière d'exporter les fichiers de Medit Link.

Settings
General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide


Export Options
Type
exocad
Export Files To
D:/YHGam_Test/
Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files
Image Format
☒ Convert images to the below format
☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP
Compress & Combine
☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh
Options when same folder or file already exists.
☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files
Rule for Folder Name
☒ Case Creation Date Scanned Date Order Date
☒ Patient Name Case Name Partner Name
☐ Patient ID Order ID
Folder Name
Case Creation Date - Patient Name
Rule for File Name
☒ Case Creation Date Scanned Date Order Date
☒ Patient Name Case Name Partner Name
☐ Patient ID Order ID
File Name
Case Creation Date - Patient Name
Apply
Close

Type de CAD	Sélectionnez le programme CAD que vous souhaitez utiliser pour la conception. Le programme ajustera les résultats en fonction de votre sélection, ce qui vous permettra de poursuivre la conception sans alignement supplémentaire des axes.
Exporter les fichiers vers	Spécifie le chemin où vous souhaitez stocker les résultats.
Format du maillage	Spécifie le format du fichier de maillage final.
Format d'image	Spécifie le format des fichiers image exportés.
Compresser et combiner	Compresser les fichiers : Comprime tous les résultats dans un seul fichier. Combiner un maillage individuel : Combine tous les résultats pour le maxillaire ou la mandibule dans un seul fichier. Lorsque vous utilisez des programmes qui ne peuvent pas importer et travailler avec des fichiers multiples, vous pouvez les fusionner en un seul pour travailler dans ces programmes.

Options lorsque le même dossier ou fichier existe déjà.	Choisissez l'action par défaut pour les cas où le même dossier ou nom de fichier existe dans le chemin cible. • Toujours demander lors de l'exportation. • Exporter un nouveau fichier et écraser les fichiers existants. Le fichier actuellement stocké sera perdu. • Créer un dossier et exporter les fichiers
Règle pour le nom de dossier	Permet de définir des règles pour la création d'un nom de dossier lors de l'exportation de fichiers. Les règles définies seront appliquées à la dénomination des dossiers et le fichier exporté sera enregistré dans le dossier créé. Les informations ci-dessous peuvent être utilisées pour définir la règle. • Compte clinique Date de création du cas, Date de numérisation, Date de commande, Nom du patient, Nom du cas, Nom du partenaire, ID du patient, ID de commande • Compte laboratoire Date de création du cas, Date de numérisation, Date de commande, Nom du patient, Nom du cas, Nom du partenaire, ID de commande
Règle pour le nom de fichier	Permet de définir des règles pour le nom du fichier exporté. Les informations ci-dessous peuvent être utilisées pour définir la règle. • Compte clinique Date de création du cas, Date de numérisation, Date de commande, Nom du patient, Nom du cas, Nom du partenaire, ID du patient, ID de commande • Compte laboratoire Date de création du cas, Date de numérisation, Date de commande, Nom du patient, Nom du cas, Nom du partenaire, ID de commande

Outil de conversion de cas


Vous pouvez déplacer des cas entre différents comptes en exportant des cas existants du compte ou en important des cas exportés d'autres comptes.

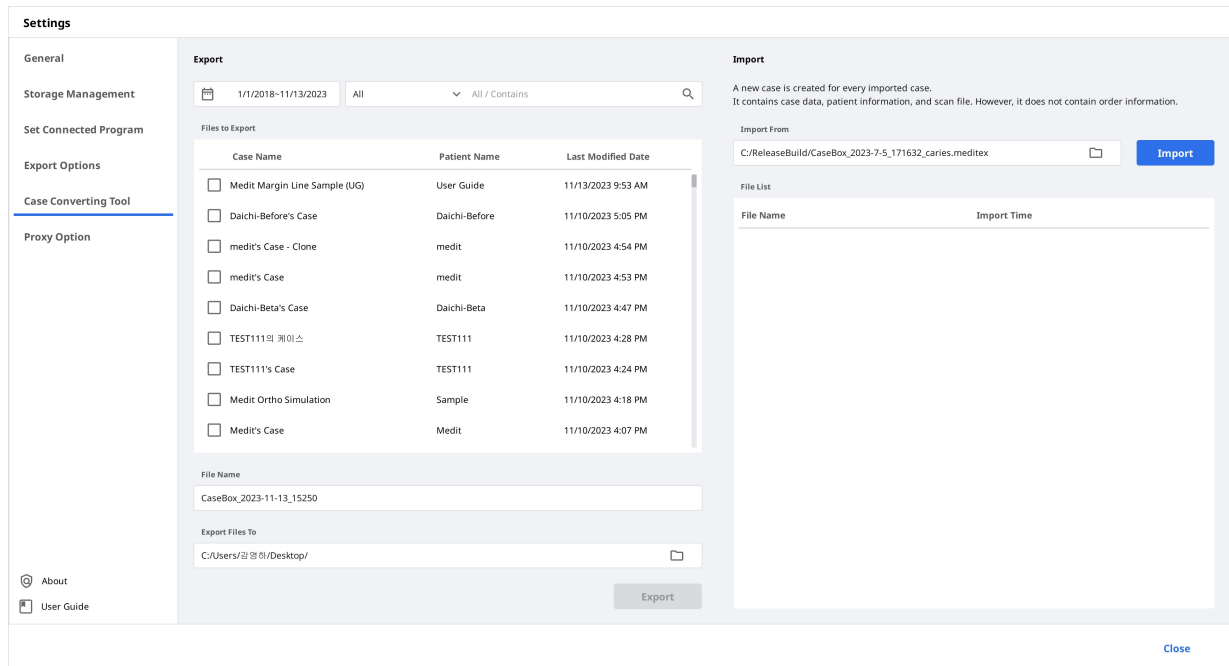


Exporter le cas

Exporter les cas du compte actuellement connecté vers le PC local.

1. Ouvrez Medit Link et cliquez sur l'icône Paramètres.

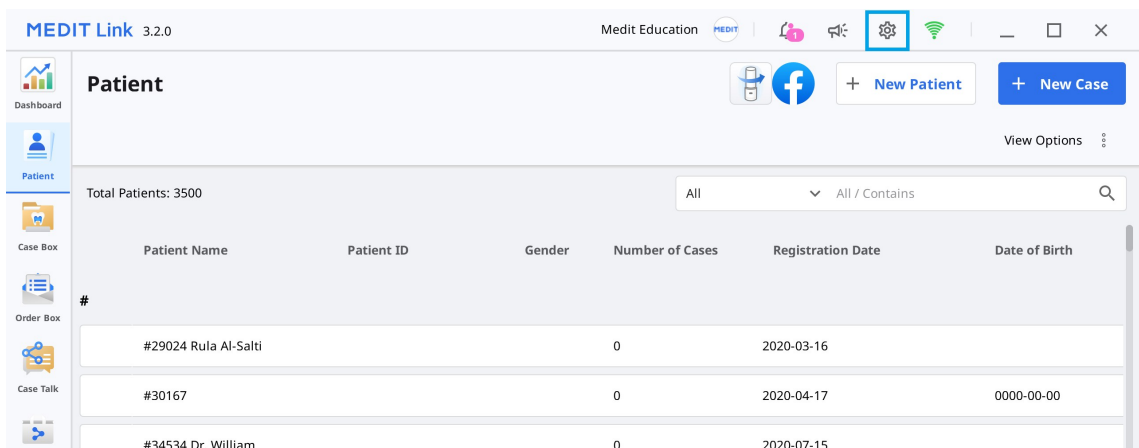

2. Choisissez la section "Outil de conversion de cas" dans le menu de gauche.

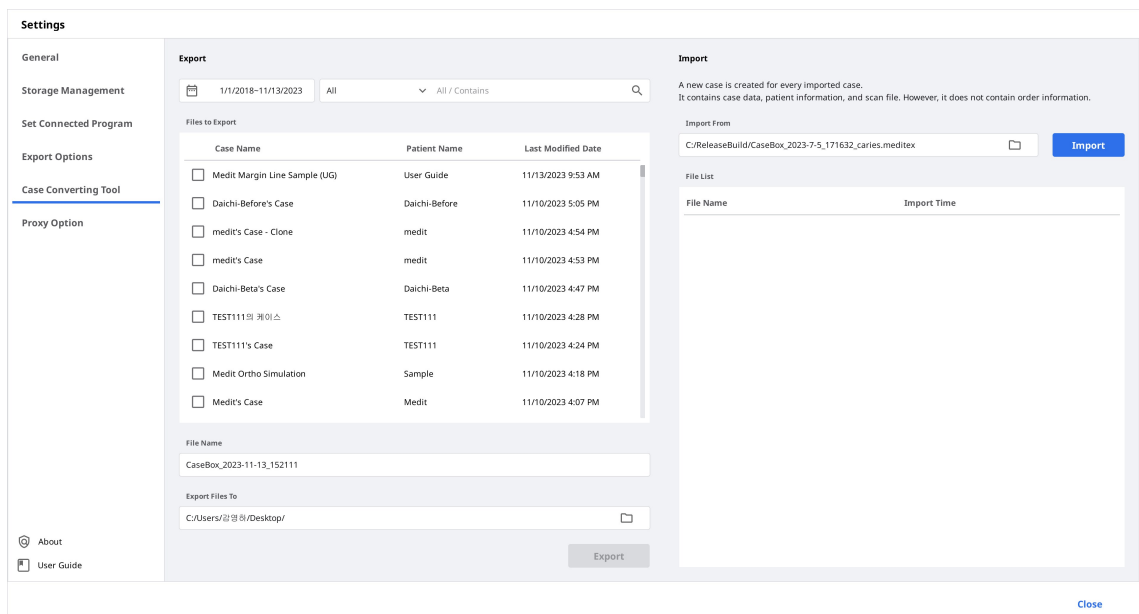

3. Dans la section Exporter, définissez une période ou recherchez des cas à exporter si nécessaire.

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name

☐ TEST111의 케이스

☐ TEST111's Case

☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. Choisissez les cas que vous souhaitez exporter dans la liste de la section "Fichiers à exporter".

Export

1/1/2018~11/13/2023

All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Définissez le nom du fichier en modifiant le nom du cas dans le champ Nom du fichier.
6. Définissez le dossier de destination pour l'exportation des cas sélectionnés.
7. Cliquez sur "Exporter".
8. Cliquez sur "Oui" pour ouvrir le dossier dans lequel le fichier est exporté.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Les cas exportés sont enregistrés au format .meditex.

Importer le cas

1. Ouvrez Medit Link et cliquez sur l'icône Paramètres.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education


Patient

Total Patients: 3500


All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	


2. Choisissez la section "Outil de conversion de cas" dans le menu de gauche.

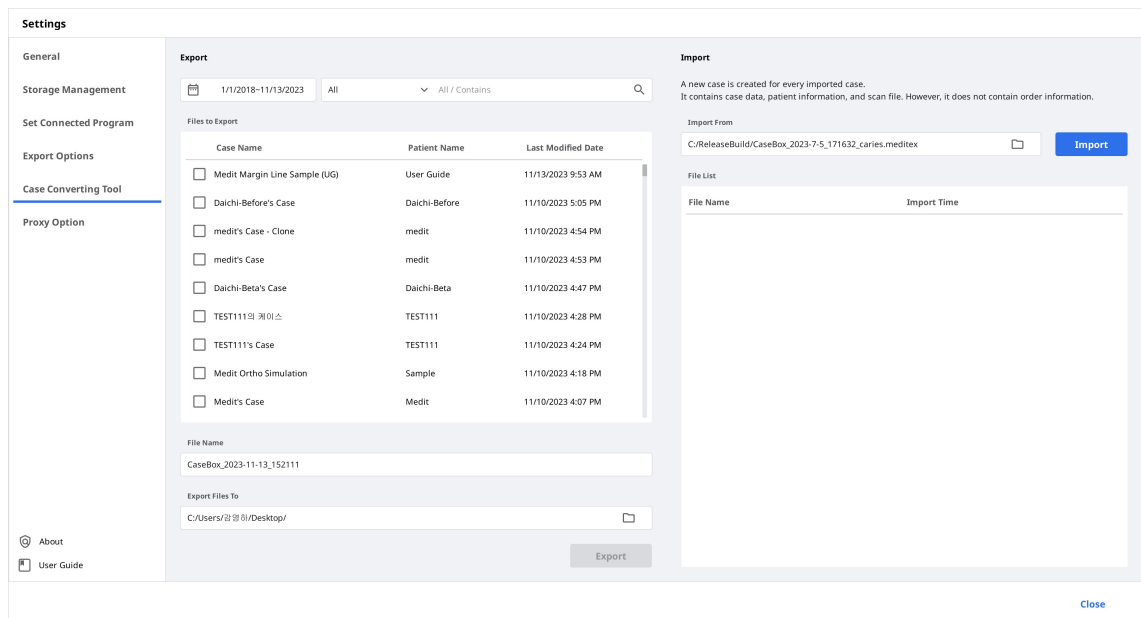

3. Dans la section Importer, cliquez sur l'icône de dossier pour rechercher sur votre PC le fichier .meditex que vous souhaitez importer.

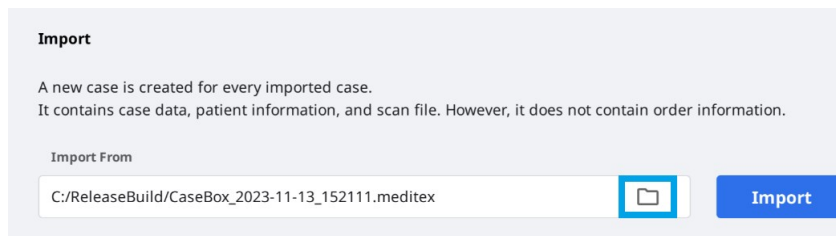

4. Cliquez sur le bouton "Importer" et cochez les fichiers à importer dans la liste ci-dessous.

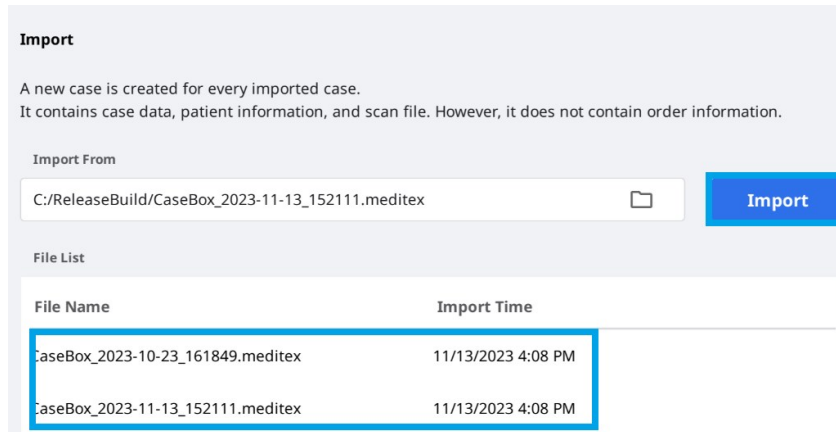

5. Le cas importé apparaîtra également dans votre Case Box (compte clinique) ou votre Work Box (compte laboratoire).

Options de proxy

Dans certains environnements réseau limités, vous pouvez modifier les paramètres réseau.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

About

User Guide

Apply

Close

À propos

Afficher des informations détaillées sur Medit Link.

About

MEDIT Link *Beta*

v 3.2.0 Build 107
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Guide de l'utilisateur


Obtenir le guide de l'utilisateur de Medit Link.

L'ouverture du guide de l'utilisateur nécessite une connexion Internet.

Menu

Dashborad

Vous pouvez afficher les statistiques de l'ensemble du travail effectué sur Medit Link dans des graphiques et des tableaux visualisés, à la fois dans l'application et la version Web de Medit Link.

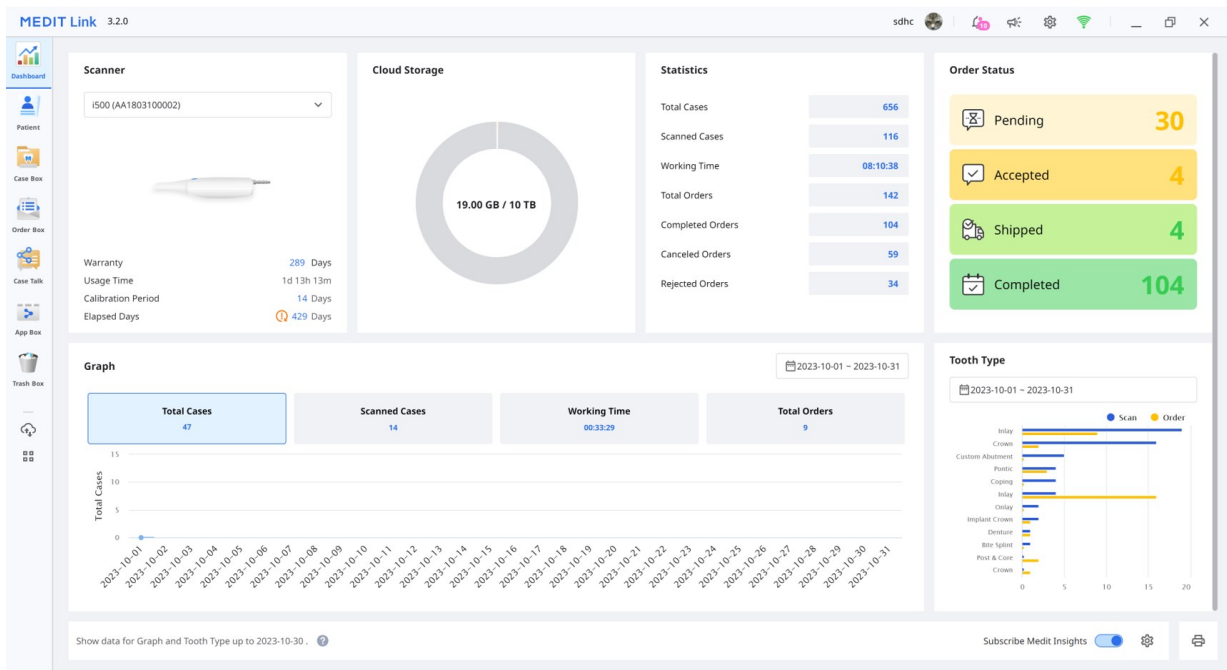

Note

Veuillez consulter [Medit Link Web > Dashboard](#) pour plus d'informations sur le dashboard et Medit Insights.

Patient

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer ou fusionner des patients dans le menu Patient.


MEDIT Link 3.2.0

Patient
Total Patients: 106
All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

Ajouter un nouveau patient

1. Cliquez sur "Nouveau patient".

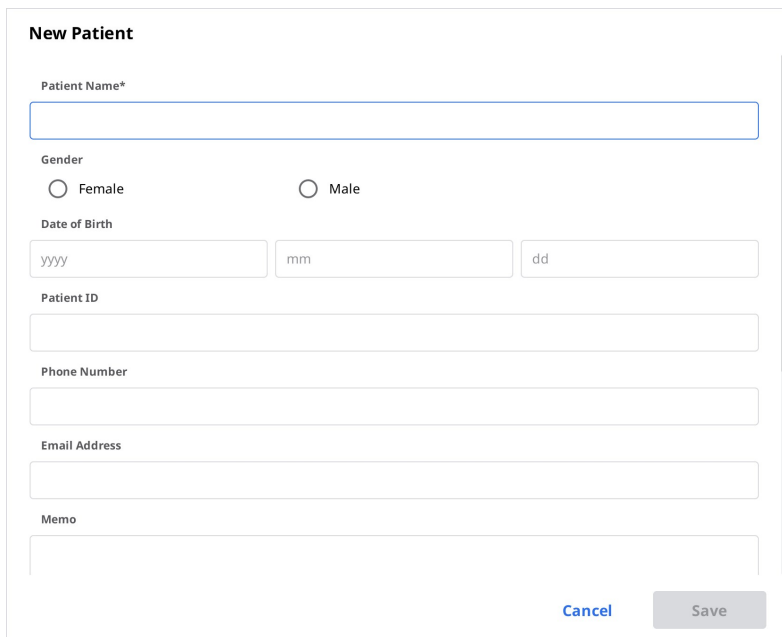

The 'New Patient' form contains the following fields and options:

- Patient Name***: A text input field.
- Gender**: Radio buttons for ☐ Female and ☐ Male.
- Date of Birth**: Three input fields for year (yyyy), month (mm), and day (dd).
- Patient ID**: A text input field.
- Phone Number**: A text input field.
- Email Address**: A text input field.
- Memo**: A large text area for notes.
- Buttons**: 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right.

2. Renseignez les informations requises dans la boîte de dialogue Nouveau patient, puis cliquez sur "Enregistrer".


Supprimer un patient



Note

Vous pouvez supprimer un patient uniquement lorsqu'il n'y a plus de cas pour ce patient.

1. Sélectionnez le patient à supprimer de la liste.

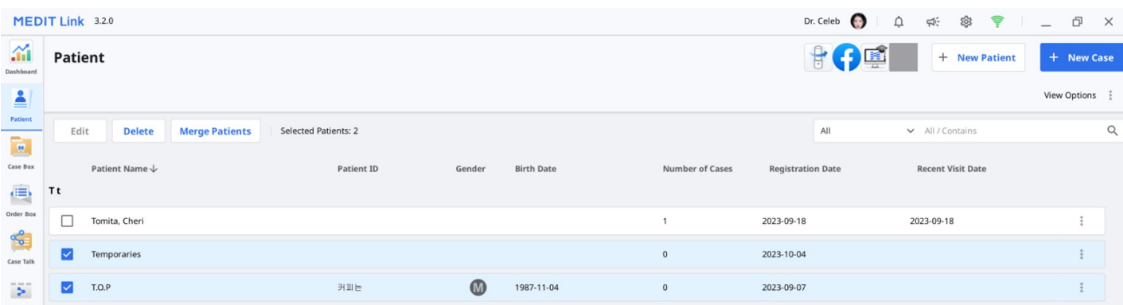

The screenshot shows the 'Patient' management interface in MEDIT Link 3.2.0. It includes a sidebar with navigation icons and a main table of patients. The table has columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registration Date, and Recent Visit Date. Three patients are listed, with checkboxes for selection.


	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date	
☐	Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18	⋮
☒	Temporaries				0	2023-10-04		⋮
☒	T.O.P	카미야	M	1987-11-04	0	2023-09-07		⋮

2. Cliquez sur "Supprimer".

Fusionner les patients

Vous pouvez fusionner tous les cas de plusieurs patients en un seul patient.

1. Sélectionnez les patients que vous souhaitez fusionner dans la liste.

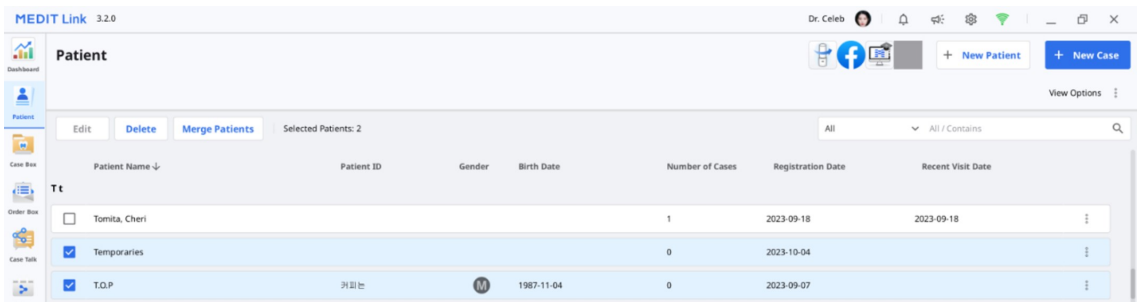

2. Cliquez sur "Fusionner les patients".
3. Sélectionnez le patient cible dans lequel vous souhaitez fusionner tous les cas.
4. Tous les cas sont fusionnés dans le patient cible et les informations sur le patient cible sont conservées.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#)
[Apply](#)

5. Cliquez sur "Appliquer" pour procéder à la fusion.

Case Box/Work Box

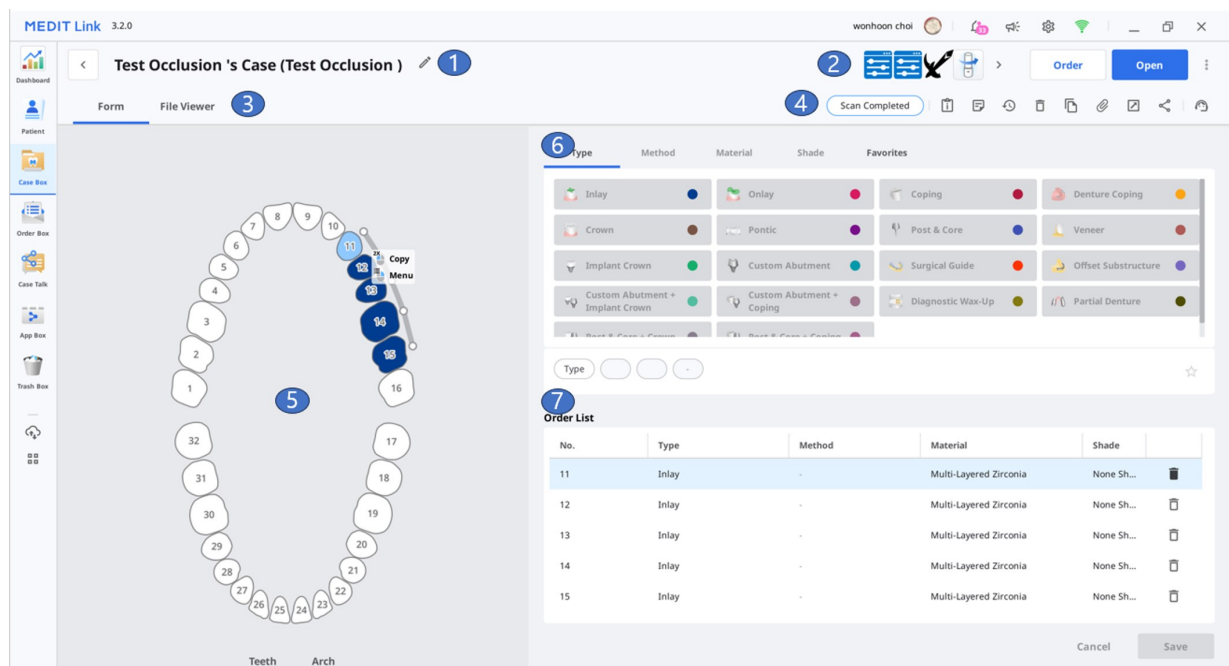

- 1 Affiche le nom du cas et le nom du patient.
- 2 Fournit les principales fonctionnalités disponibles : Commander/Scanner(Ouvrir)/boutons de commande et les icônes d'applications.
- 3 Affiche les onglets disponibles : Formulaire, CAD et Visualiseur de fichiers.
- 4 Afficher les fonctions de gestion des cas et des dossiers.

5	Affiche l'interface utilisateur d'enregistrement des formulaires pour le programme CAD sélectionné.
6	Fournit les informations sur le type/méthode/matériau/teinte que les utilisateurs peuvent choisir pour le numéro de dent sélectionné.
7	Affiche les informations de type/méthode/matériau/teinte appliquées aux dents sélectionnées.

Onglets dans Case Box / Work Box

Formulaire	CAD	Visualiseur de fichiers
L'onglet formulaire fournit une interface utilisateur permettant de saisir des informations de base pour la numérisation des travaux, telles que le type, la méthode, le matériau pour les numéros de dents et les options de numérisation. Les informations que vous saisissez sont transmises au programme de numérisation connecté et utilisées comme informations de commande lorsque vous passez une commande auprès de votre partenaire.	L'onglet CAD fournit une interface utilisateur permettant de définir les options CAD. Les informations que vous avez définies sont transmises au programme CAD.	Affichez les fichiers de résultats générés par les programmes de numérisation et la CAD. Le visualiseur de fichiers affiche et gère les modèles 3D acquis ou attachés et les images 2D.


Fonctions dans Case Box/Work Box

Les fonctions suivantes sont fournies dans Case Box/Work Box.

	Statut du cas	Affiche le statut du cas.
	Aller à Détail	Fournit un raccourci pour le même cas dans une autre box (Case Box ↔ Order Box ; In Box ↔ Work Box).
	Renseignements sur le cas	Examinez les détails du cas et enregistrez-les au format PDF ou imprimez-les.
	Note et Tags	Ajoutez une note ou des tags lors de l'enregistrement ou de la commande d'un cas. Utilisez-les pour communiquer à vos partenaires toute information supplémentaire ou complémentaire sur le cas.
	Historique du cas	Fournit des informations détaillées sur l'historique du cas. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close

	Supprimer	Supprimer le cas. Vous ne pouvez pas supprimer les cas commandés ou les cas créés hors ligne.
	Cloner	Permet de créer un double du cas en cours dans Case Box. Toutes les données seront copiées dans le cas cloné. Cette fonction permet de reproduire les informations de traitement pour le même patient ou d'effectuer une commande supplémentaire avec les mêmes informations ou fichiers.
	Joindre	Permet de joindre des fichiers dans différents formats.
	Exporter	Exporter les fichiers de résultats de numérisation ou de CAD vers le PC local. Vous pouvez choisir le format de fichier que vous préférez lors de l'exportation des fichiers. Les fichiers exportés peuvent être utilisés dans des logiciels de CAD et de CAM pour des travaux ultérieurs.
	Partager	Créer un lien pour le partage. Les utilisateurs disposant du lien partagé peuvent accéder aux données 3D dans un navigateur tel que Chrome, Firefox ou Safari sans avoir à installer de programmes supplémentaires. Vous pouvez partager librement le lien avec n'importe qui ou seulement avec des personnes spécifiques. Un code PIN ou une date d'expiration du lien peuvent être définis pour sécuriser les informations privées.
	Soumettre une demande d'assistance	Accédez à une page du Centre d'aide Medit pour soumettre la demande d'assistance.

Order Box/In Box

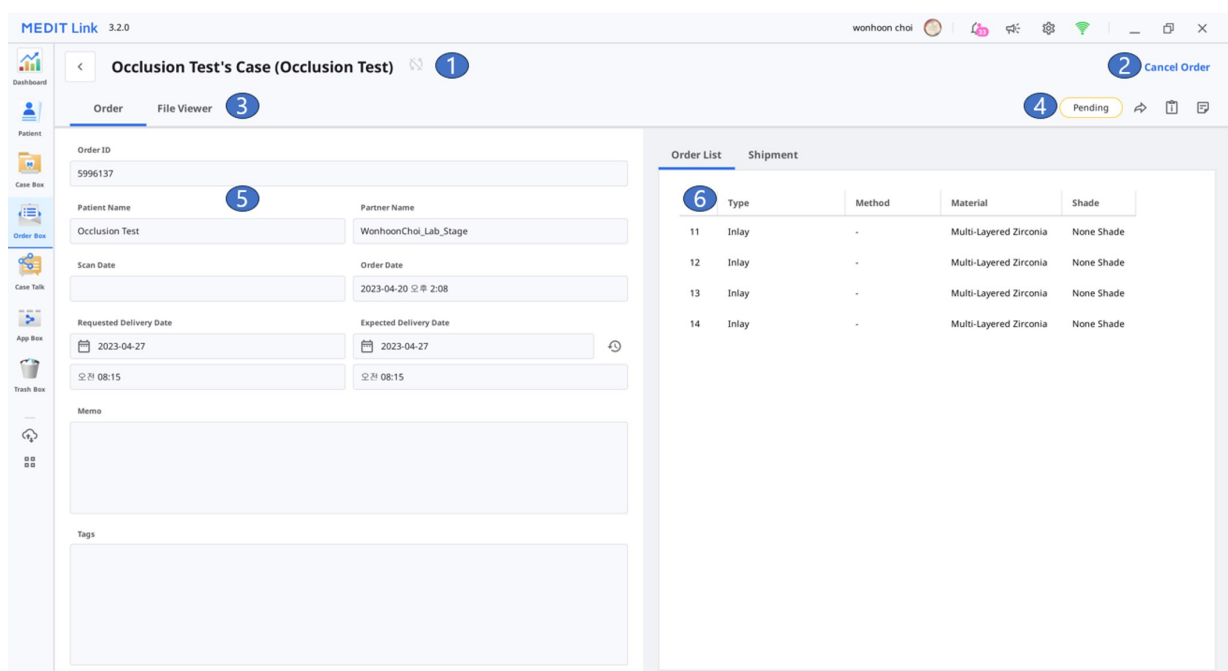

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

- 1 Affiche le nom du cas et le nom du patient.
- 2 Fournit des fonctions de gestion des commandes (accepter/annuler ; livrer/réceptionner).

3	Affiche les onglets disponibles : Commande, Visualiseur de fichiers
4	Affiche les fonctions de gestion des cas et des dossiers : statut du cas, raccourcis pour des informations détaillées, renseignements sur le cas, note et tags, etc.
5	Affiche les informations détaillées de la commande, notamment le numéro de commande, le nom du patient, le nom du partenaire, la date de numérisation, la date de commande, la date de livraison et les notes et tags.
6	Affiche les informations sur le produit commandé et le statut de la livraison.


Onglets dans Order Box/In Box

Commande	Visualiseur de fichiers
Vérifiez les informations détaillées relatives à la commande, telles que le numéro de commande, le nom du patient, le nom du compte, la date de numérisation, la date de commande, la date de livraison, les notes et les tags.	Visualiser les fichiers générés par les opérations de scan/CAD. Le visualiseur de fichiers affiche et gère les modèles 3D et les images 2D acquis ou attachés.

Case Talk

Les cas créés dans le Medit Link peuvent être partagés avec des personnes en particulier, avec toute personne disposant du lien de partage ou avec les membres enregistrés de Medit Link.

L'utilisateur peut voir une liste de tous les cas partagés via Case Talk dans l'application Medit Link et Medit Link Web.

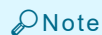

Le service Case Talk nécessite une connexion Internet.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** (p* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited


Les cas partagés peuvent être visualisés via un navigateur Web sans installer de programme séparé, ce qui permet une communication facile sur les données 3D sur divers appareils.

App Box

App Box propose divers programmes complémentaires qui complètent votre flux de travail de numérisation de base et améliorent votre productivité.

L'App Box se compose de "Medit Apps", qui comprend des applications originales développées par Medit, et de "Partner Apps", qui sont des applications d'intégration avec les partenaires de Medit dans différents secteurs de la dentisterie numérique, tels que l'impression 3D, les logiciels CAD/CAM, etc.

Téléchargez les applications disponibles de Medit Apps et Partners App pour créer des dispositifs dentaires, analyser les données de numérisation, vous aider lors d'une consultation ou rationaliser votre processus de travail.

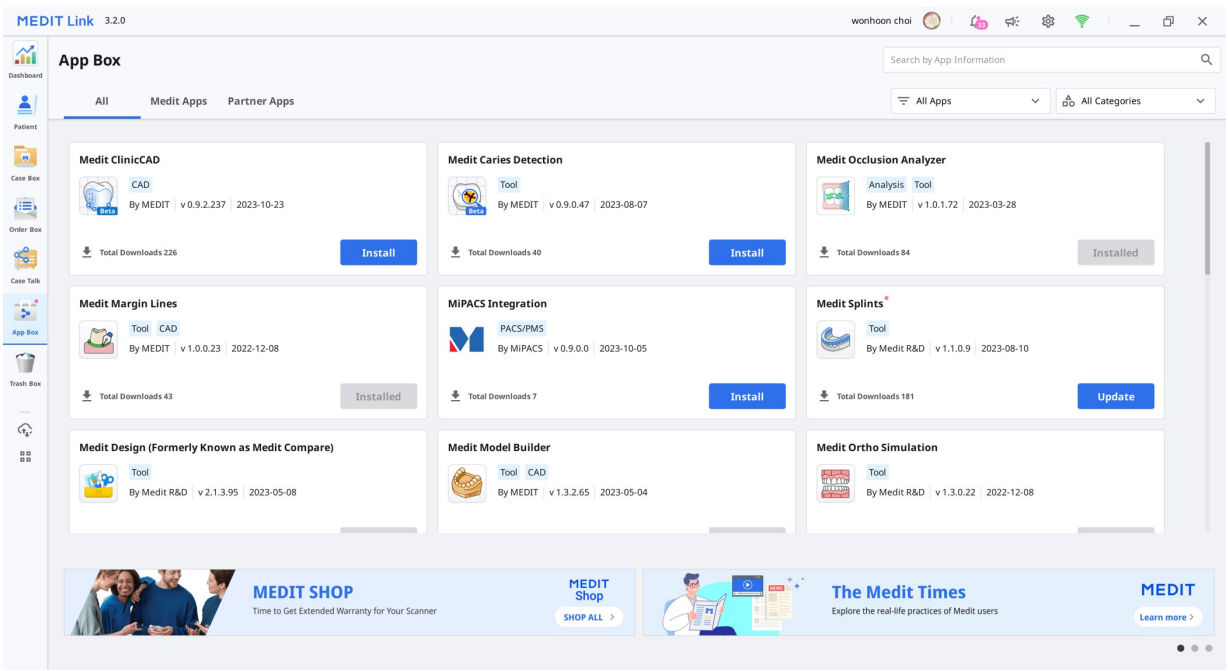

Trash Box

Trash Box stocke temporairement les cas supprimés. Tout cas dans Trash Box peut être soit restauré, soit supprimé définitivement.

 **Mise en garde**

Les données supprimées de Trash Box seront définitivement supprimées de votre PC et du serveur et ne pourront pas être récupérées.

MEDIT Link 3.2.0

Trash Box

Restore Selected Cases: 0

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G1159849230418073332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Gestionnaire de synchronisation de cas

Le gestionnaire de synchronisation de cas vous aide à charger et à télécharger les cas dans Medit Link. Vous pouvez téléverser plusieurs cas sur le cloud ou les télécharger sur votre PC local.

[illegible]

Téléverser

Nombre de cas total / Cas sélectionnés	Vérifiez le nombre de cas total/sélectionnés qui doivent être téléversés.
Tout téléverser	Téléversez tous les cas dans le cloud.
Tout annuler	Annuler toutes les demandes de téléchargement.
	Téléverser le dossier dans le cloud.
	Annuler le téléversement du cas.
	Réessayez de téléverser le cas.

Télécharger


Nombre de cas total / Cas sélectionnés	Vérifiez le nombre de cas total/sélectionnés qui doivent être téléchargés.
Tout télécharger	Télécharger tous les cas sur le PC.
Tout annuler	Annuler toutes les demandes de téléchargement.
	Télécharger le cas sur le PC.
	Annuler le téléchargement du cas.
	Réessayez de télécharger le cas.

Informations Medit

Vous pouvez accéder directement aux menus disponibles uniquement sur Medit Link Web, tels que My Info, Partners et Membership. Veuillez vous référer à Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#), et [My Info](#) pour une description détaillée des menus de Medit Link Web.

Vous pouvez accéder à la boutique en ligne de Medit, Medit Shop, où vous pouvez acheter des extensions de garantie pour les scanners et d'autres produits Medit, tels que les sacs à dos pour scanners.

Vous pouvez également obtenir diverses informations sur l'utilisation de Medit Link. Accédez aux ressources éducatives et informatives de Medit, telles que le Centre d'aide Medit, la chaîne YouTube Medit Academy et la plateforme de formation en ligne Medit Academy.

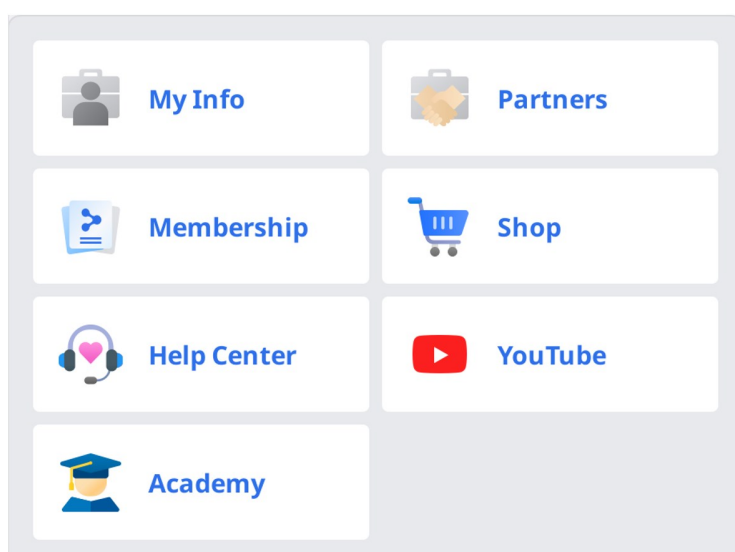

Visualiseur de fichiers

Le visualiseur de fichiers regroupe et affiche diverses données, y compris les données acquises à partir de programmes liés à Medit Link et les données jointes par les utilisateurs.


Il fournit des fonctions de gestion de base telles que l'affichage/le masquage des données, le réglage de l'opacité et la suppression des données.

Il prend en charge les aperçus de fichiers dans les formats suivants :

- Données 3D : STL, OBJ, PLY
- Images 2D : PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Fichiers vidéo : MKV, MP4, AVI, WMV

Arborescence des données

Vous pouvez regrouper et afficher toutes les données du cas dans l'arborescence des données. Vous pouvez également afficher/masquer des données, régler la transparence et supprimer des données de l'arborescence des données.




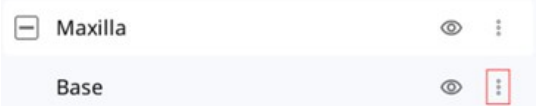
	Afficher / Masquer	Vous pouvez afficher ou masquer les données.
	Opacité	La barre de défilement apparaît lorsque vous cliquez sur l'une des données de l'arborescence de données. Vous pouvez régler l'opacité des données affichées en déplaçant la barre de défilement. 
	Plus	Cliquez sur l'icône Plus pour afficher les fonctionnalités supplémentaires disponibles.  • Afficher ceci uniquement : Masquer toutes les autres données mais afficher uniquement les données correspondantes. • Masquer : Masquer les données. • Dupliquer : Copiez les données et ajoutez-les au groupe de pièces jointes. • Exporter : Exportez les fichiers sélectionnés. • Renommer : modifier le nom des données. • Supprimer : Supprimez les données.

Note

Vous pouvez renommer les données lorsque vous êtes en ligne.

Outils de contrôle du modèle

Contrôle du modèle 3D

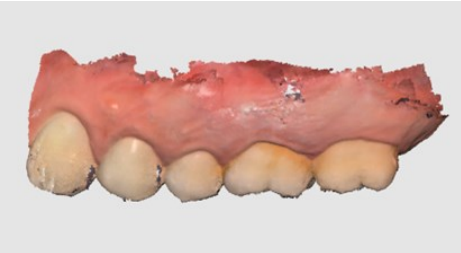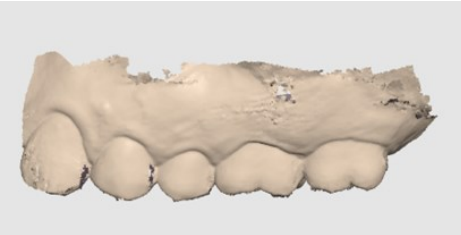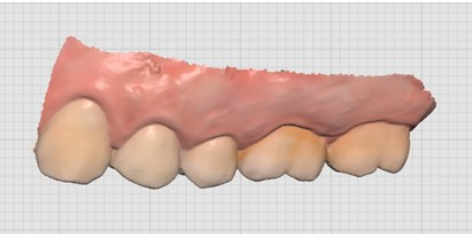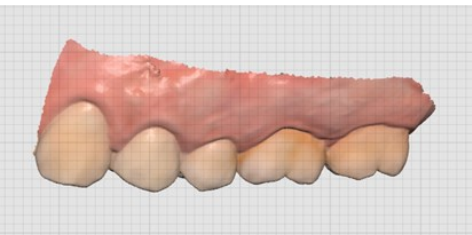	Panoramique	Déplacer le modèle.
	Pivoter	Pivoter le modèle.
	Zoom avant/arrière	Zoom avant et arrière sur le modèle.
	Ajustement du zoom	Positionne le modèle au centre de l'écran.
	Mode d'affichage du modèle	Texture activée
		Affiche les données dans des couleurs de texture réelles. 
	Mode d'affichage du modèle	Texture désactivée
		Affiche les données dans une seule couleur. 
	Paramètres de grille (mm)	Grille activée
		Affiche la grille en arrière-plan. 
		Superposition activée
	Paramètres de grille (mm)	Superpose la grille au modèle. 
		Grille désactivée
		Masque la grille.

Contrôle des images 2D

	Image suivante/précédente	Permet de naviguer entre les images.
	Modifier	Permet de modifier l'image.


 	Pincer/coller la fenêtre	Vous pouvez détacher la fenêtre d'image et l'ajuster à la position souhaitée. Vous pouvez redimensionner la fenêtre. Lorsque la fenêtre est restaurée à son emplacement d'origine, elle reprend sa taille par défaut.
--	--------------------------	---

Outils de fonction

Capture d'image et notes


Capturez l'écran actuel sous forme d'image 2D, dessinez dessus ou ajoutez des notes.

Vous pouvez l'enregistrer sous forme de fichier avec vos notes et l'envoyer comme référence.

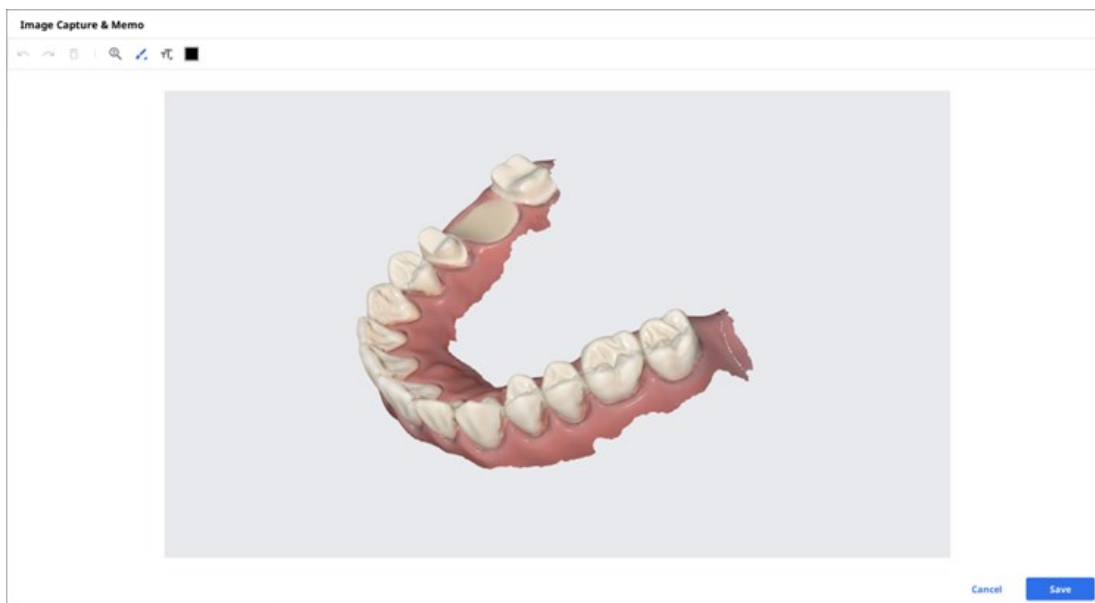

Capture ortho

Capture les images dans la direction de visualisation actuelle et en haut/bas/gauche/droite à partir de la direction de visualisation actuelle.

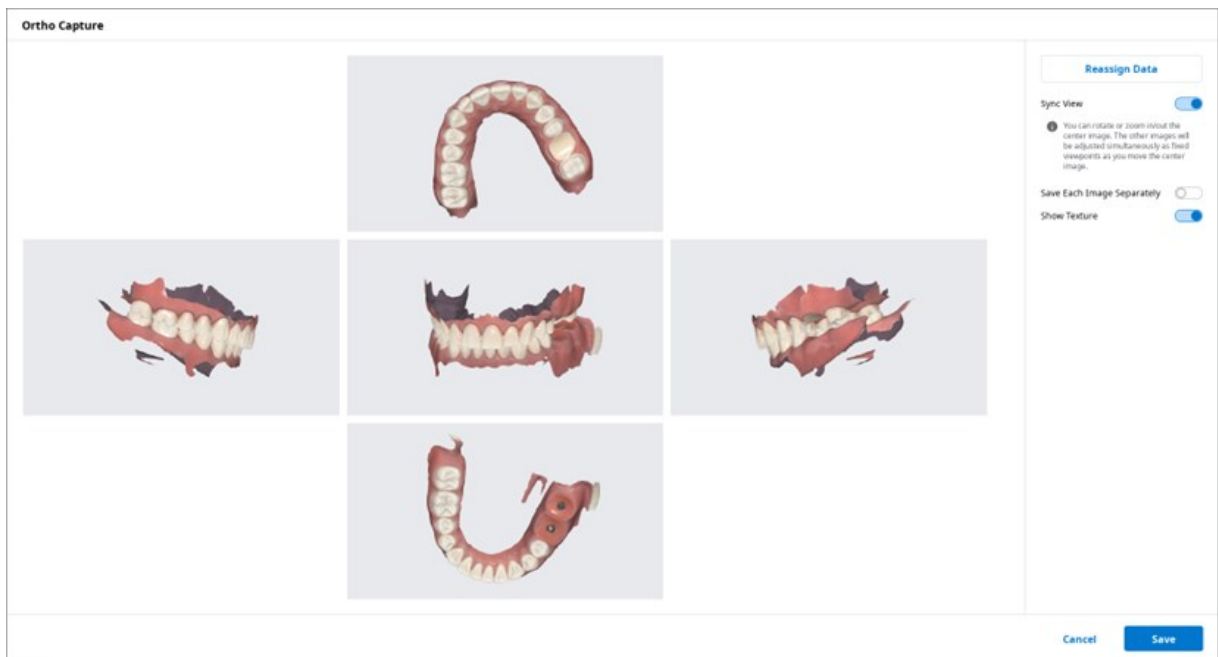

Vue synchrone	Lorsqu'elle est activée, vous pouvez faire pivoter l'image centrale ou effectuer un zoom avant/arrière. Les autres images seront ajustées simultanément en tant que points de vue fixes lorsque vous déplacerez l'image centrale. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez effectuer un panoramique, pivoter ou zoomer avant/arrière sur toutes les images individuellement.
Sauvegarder chaque image séparément	Enregistrez chaque image en haute résolution.
Afficher la texture	Activer/désactiver la texture du modèle.
Réattribuer les données	Modifiez les données pour maxillaire/mandibule à l'aide de la fonction Réattribuer les données. Vous pouvez utiliser les données modifiées pour créer et utiliser les images résultantes de la Capture ortho. • Données de numérisation : Les données de numérisation du cas sont toutes affichées. • Maxillaire : les données que vous avez sélectionnées pour le maxillaire sont affichées. • Mandibule : Les données que vous avez sélectionnées pour la mandibule sont affichées.


Remplir les trous

Remplir les trous dans les données de maillage 3D.



Découpage


Le découpage fournit divers outils pour modifier les données.

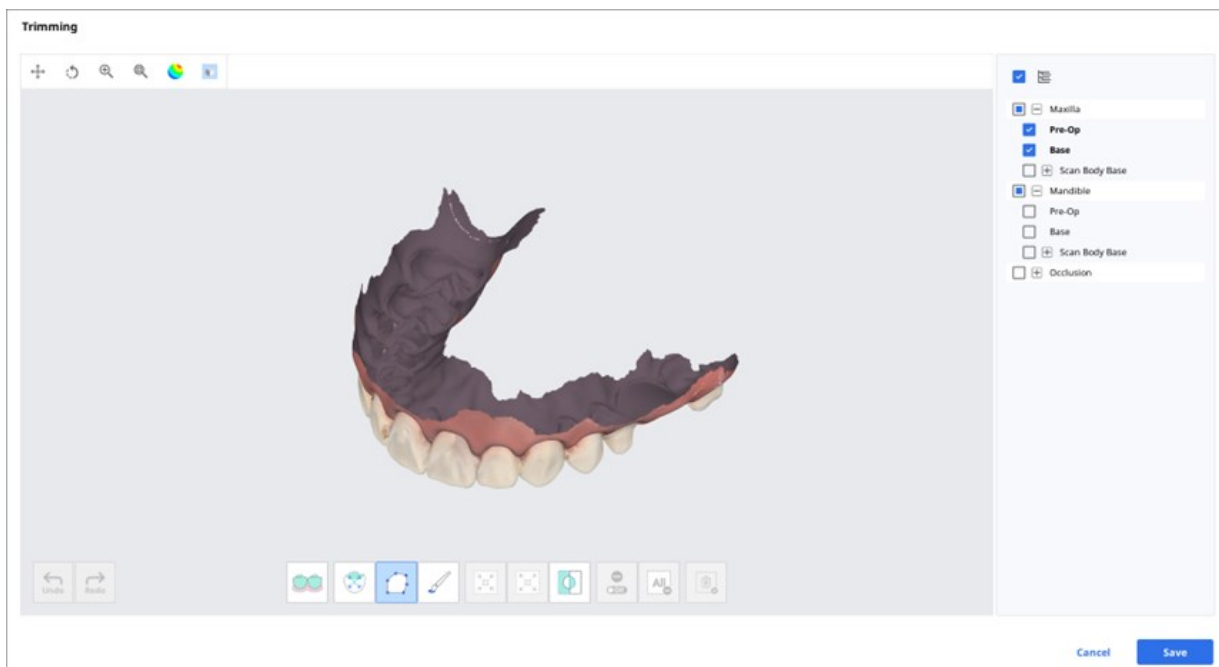

Les données de maillage 3D sélectionnées peuvent être modifiées à l'aide de différents outils situés en bas de la fenêtre.

Sélection		Sélection intelligente des dents	Sélectionne automatiquement toutes les dents de l'arcade en laissant de côté les parties gingivales. Note Cette fonction n'est disponible que pour les données de numérisation acquises à l'aide de Medit Scan for Clinics avec l'option "Utiliser le GPU" activée.
		Sélection intelligente d'une seule dent	Permet de sélectionner automatiquement la zone d'une seule dent en un clic. Vous pouvez cliquer ou glisser sur la dent.
		Sélection polyligne	Sélectionne toutes les entités au sein d'une forme polyligne à l'écran.
		Sélection pinceau	Sélectionnez toutes les entités sur un chemin tracé à main levée sur l'écran. Seule la face avant sera sélectionnée. Le pinceau est disponible en trois tailles différentes.
Ajustement de la zone sélectionnée		Rétrécir la zone sélectionnée	Réduit la zone sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
		Développer la zone sélectionnée	Développe la zone sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
		Inverser la zone sélectionnée	Inverser la sélection.
Désélection		Sélection/Désélection	Lorsqu'elle est activée, cette fonction désélectionne la zone à l'aide de différents outils.
		Effacer toute la sélection	Efface les zones sélectionnées.
		Supprimer la zone sélectionnée	Supprimez les données de la zone sélectionnée.

1. Sélectionnez la zone à découper à l'aide des outils de sélection de zone.

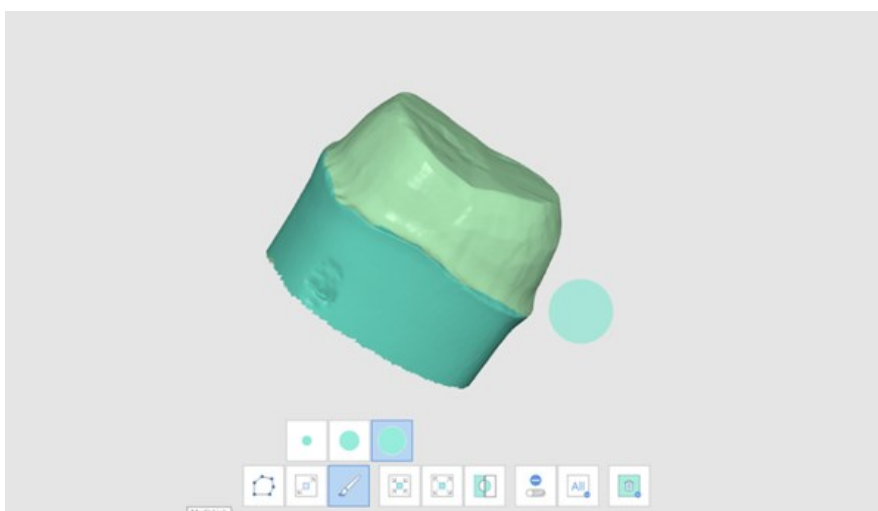


Note


L'outil de découpage Polyligne sélectionne toutes les entités à l'intérieur d'une forme polyligne dessinée à l'écran, tandis que l'outil de découpage Pinceau ne sélectionne que les données de la face avant.

2. Les trois outils suivants permettent d'inverser, de rétrécir ou de développer la sélection.


- Inverser la zone sélectionnée

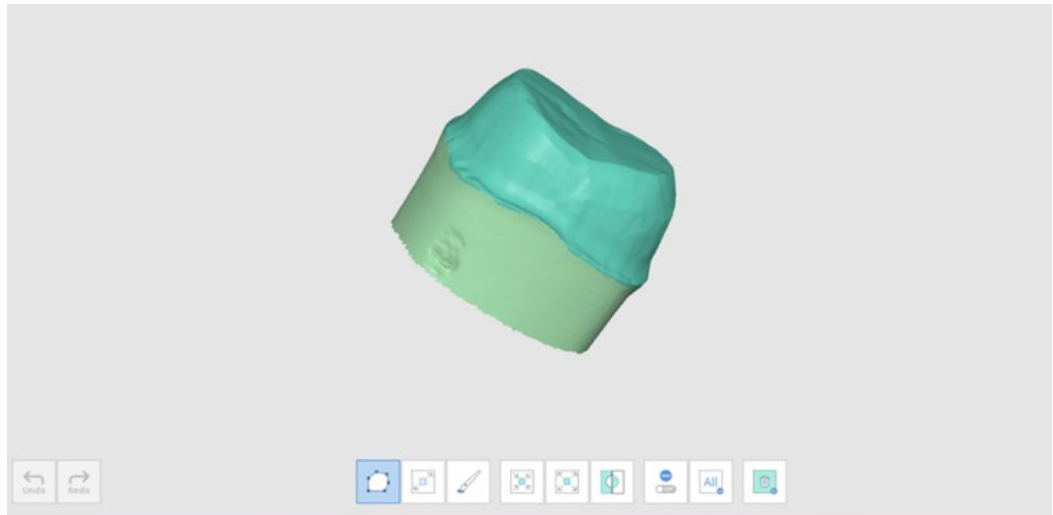

- Rétrécir la zone sélectionnée

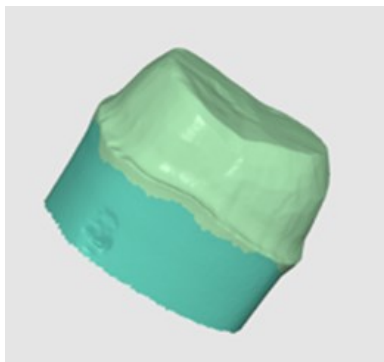

- Développer la zone sélectionnée

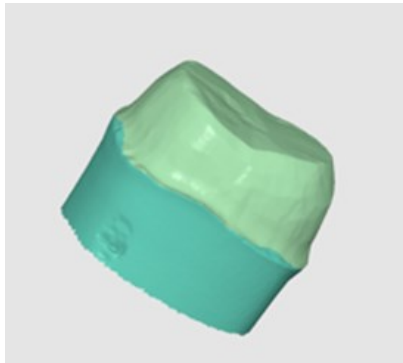

3. Vous pouvez désélectionner les zones sélectionnées à l'aide de l'outil Supprimer la zone sélectionnée.



Optimiser l'alignement de l'occlusion

Optimiser l'alignement de l'occlusion. Vous pouvez choisir les données cibles et ajuster l'alignement de l'occlusion.




Niveau de compensation

Bas	Compensation Level	
Moyen	Compensation Level	

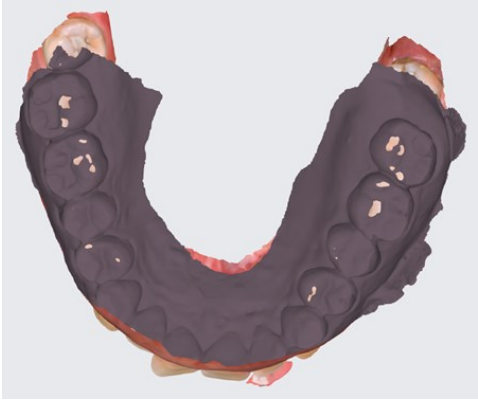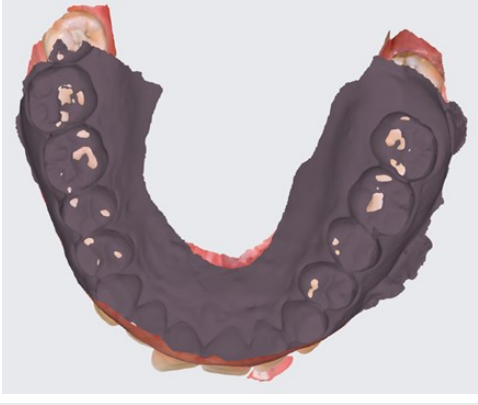Élevé	Compensation Level ☒	
Désactivé	Compensation Level ☐	

Mouvement mandibulaire

Vous pouvez lire les mouvements mandibulaires enregistrés dans Medit Scan for Clinics pour voir les contacts occlusaux dynamiques entre les dentitions supérieures et inférieures.

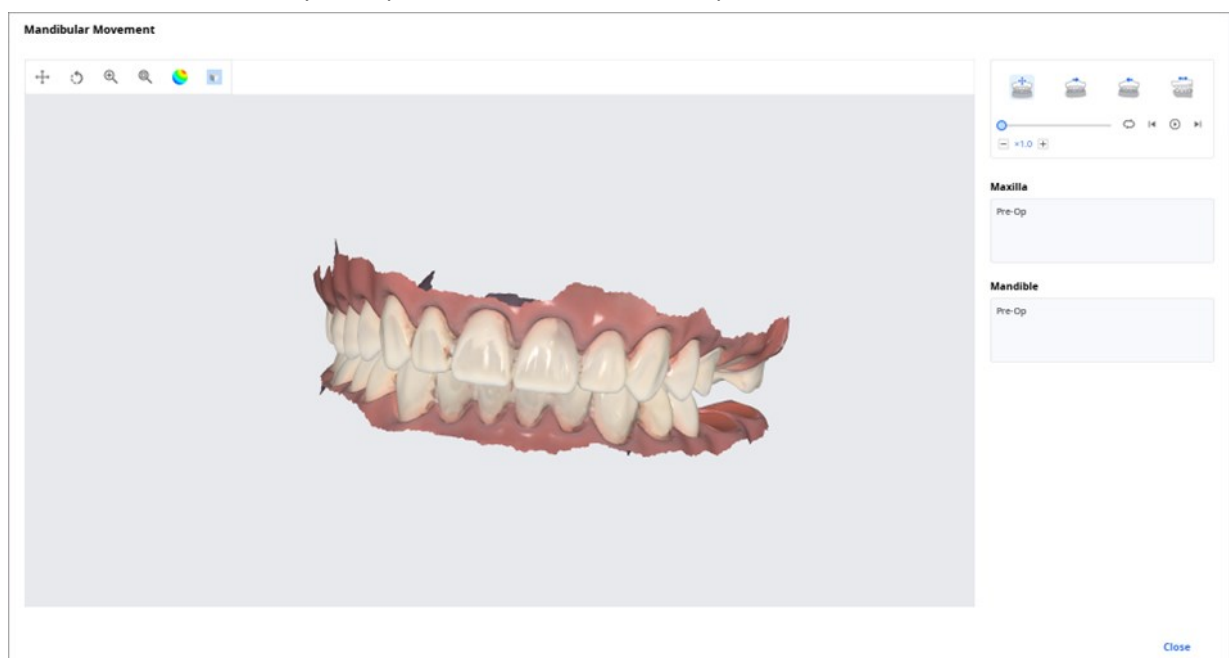

	Mouvement libre	Lancer l'enregistrement du déplacement libre de la mandibule.
	Mouvement latéral gauche	Lancer l'enregistrement du déplacement de la mandibule vers la gauche.
	Mouvement latéral droit	Lancer l'enregistrement du déplacement de la mandibule vers la droite.

	Mouvement protrusif	Lancer l'enregistrement du déplacement de la mandibule vers l'avant.
---	---------------------	--

Gérer les données Multi occlusion dans le Visualiseur de fichiers

Vous pouvez obtenir plusieurs résultats de données d'occlusion à partir de l'application Medit Scan.

Medit Link fournit la fonction de gestion des résultats via le "Visualiseur de fichiers".

Comment gérer plusieurs résultats


Lorsque l'utilisateur obtient plusieurs résultats d'occlusion à partir de Medit Scan for Clinics, Medit Link offre la possibilité de sélectionner un résultat.

La liste des résultats est répertoriée par nom et vous pouvez sélectionner un élément.

Le modèle sélectionné sera affiché dans l'"Arborescence des données" et la "Zone d'affichage du modèle".



Vous pouvez réduire la liste et modifier l'élément à l'aide des icônes fléchées.

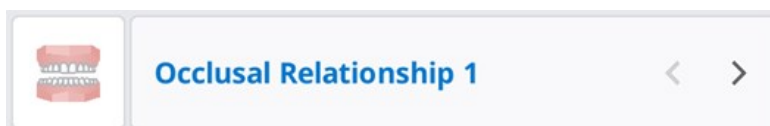

Options de visualisation

Vous pouvez modifier les Options de visualisation pour personnaliser la présentation de la liste de cas dans la Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtres de statut

Afficher ou masquer chaque filtre représentant le statut du cas. Les filtres de statut cachés ne sont pas affichés à l'écran dans Case Case/Work Box/In Box/Order Box.

Vous pouvez facilement trouver le cas dont vous avez besoin grâce aux filtres de statut.

- Vous pouvez cliquer sur le statut que vous souhaitez consulter pour afficher uniquement les cas dans cet état.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts à la fois.

Pour chaque box, les options de filtrage suivantes sont disponibles :

Box	Filtres de statut
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Items du tableau

Sélectionnez les éléments à afficher dans la liste de cas dans Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Vous pouvez modifier l'ordre des items du tableau ou ajuster la largeur des colonnes du tableau dans l'affichage liste pour optimiser au mieux l'environnement de l'utilisateur.

Pour chaque box, les éléments de tableau suivants sont disponibles :

Box	Items du tableau
Patient	Nom du patient / ID du patient / Sexe / Nombre de cas / Date d'enregistrement / Date de naissance

Case Box	Statut / Nom du cas / Date de naissance / Informations du formulaire / Date modifiée / Date de numérisation / Date de commande / Nom du laboratoire
Order Box	Statut / Nom du cas / Nom du patient / Date de numérisation / Date de commande / Nom du laboratoire / Date de livraison demandée / Date modifiée
In Box	Statut / Nom du cas / Date de commande / Date de livraison demandée / Date modifiée / Nom de la clinique
Work Box	Statut / Nom du cas / Nom du patient / Informations du formulaire / Date modifiée / Date de livraison demandée / Date de numérisation / Nom de la clinique / Date de commande

Type de visualisation

Modifiez le type d'affichage entre l'affichage en galerie et l'affichage liste sur Case Box.

Pour chaque box, les options de type de visualisation suivantes sont disponibles :

Box	Options de type de visualisation
Patient	Affichage liste
Case Box	Affichage liste / Affichage en galerie
Order Box	Affichage liste
In Box	Affichage liste
Work Box	Affichage liste

Regroupement

Sélectionnez une option de regroupement pour classer et réorganiser les cas dans la liste selon l'option sélectionnée.

Pour chaque box, les options de regroupement suivantes sont disponibles :

Box	Options de regroupement
Case Box	Aucun / Nom du patient / Date de numérisation / Date de commande
Order Box	Aucune / Date de numérisation / Date de commande / Date de livraison demandée
In Box	Aucun / Date de commande / Date de livraison demandée
Work Box	Aucun / Date de livraison demandée



Les options de regroupement ne sont pas disponibles dans le Patient, le Case Talk et la Trash Box.

Tri

Sélectionnez une option de tri pour modifier l'ordre des cas dans la liste en fonction de l'option sélectionnée.

Pour chaque box, les options de tri suivantes sont disponibles :

Box	Regroupement	Options de tri
Patient	-	Nom du patient / ID du patient / Date de naissance / Date d'enregistrement / Nombre de cas
Case Box	Aucun	Nom du patient / Date modifiée / Date de numérisation / Date de commande / Nom du laboratoire
	Nom du patient	Date modifiée / Date de numérisation / Date de commande / Nom du laboratoire
	Date de numérisation	Nom du patient / Date de dernière modification / Date de commande / Nom du laboratoire
	Date de commande	Nom du patient / Date modifiée / Date de numérisation / Nom du laboratoire
Order Box	Aucun	Nom du patient / Date de numérisation / Date de commande / Date de livraison demandée / Nom du laboratoire
	Date de numérisation	Nom du patient / Date de commande / Date de livraison demandée / Nom du laboratoire
	Date de commande	Nom du patient / Date de numérisation / Date de livraison demandée / Nom du laboratoire
	Date de livraison demandée	Nom du patient / Date de numérisation / Date de commande / Nom du laboratoire
In Box	Aucun	Nom du patient / Date de commande / Date de livraison demandée / Nom de la clinique
	Date de commande	Nom du patient / Date de numérisation / Date de livraison demandée / Nom de la clinique
	Date de livraison demandée	Nom du patient / Date de commande / Nom de la clinique
Work Box	Aucun	Nom du patient / Date de la dernière modification / Date de livraison demandée / Nom de la clinique
	Date de livraison demandée	Nom du patient / Date de la dernière modification / Nom de la clinique



Les options de tri ne sont pas disponibles dans le Patient, le Case Talk et la Trash Box.

Filtrage et recherche

Filtrage par patient

Permet de filtrer et d'afficher les cas par nom de patient. Vous pouvez créer une liste en filtrant uniquement les patients sur lesquels vous devez travailler.

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a 'Dashboard' icon. The main area has a 'Case Box' section with a dropdown menu currently set to 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (checked), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Saisissez le nom du patient.

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Patient' filter. The search input contains 'won'. Below the input, a list of patient records is displayed, each with an unchecked checkbox and a text entry: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'.

2. Sélectionnez les patients parmi les résultats de recherche ci-dessous.

This screenshot shows the patient selection interface. At the top, a summary bar shows 'wonhoonchoi / - / - / -' and '+ 2'. Below is a search input with 'won' and a list of search results with checkboxes. The results include 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'won / - / - / -', 'wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234', and 'won / - / - / -'. Below the search results, a section titled 'Selected Patients' contains a 'Clear Selection' link and three items, each with a checked checkbox: 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'WonHoonChoi / - / - / -'.

3. seuls les cas des patients sélectionnés sont affichés dans la liste.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - +2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplcase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrage par date

Filtre et affiche les cas modifiés pour la dernière fois dans la période définie.

1. Cliquez sur le filtre de durée.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Sélectionnez la durée dans la liste.
 - Tout : Affiche tous les cas.
 - Gamme personnalisée : spécifiez les dates de début et de fin pour afficher les derniers cas modifiés au cours de la période.
 - Aujourd'hui : Afficher les cas modifiés en dernier aujourd'hui.
 - Hier : Afficher les cas modifiés pour la dernière fois hier.
 - 7 derniers jours : Afficher les cas modifiés pour la dernière fois au cours des 7 derniers jours, à l'exclusion d'aujourd'hui.
 - 30 derniers jours : Afficher les cas modifiés pour la dernière fois au cours des 30 derniers jours, à l'exclusion d'aujourd'hui.
 - Ce mois-ci : Afficher les cas modifiés pour la dernière fois au cours de ce mois.
 - Mois précédent : Afficher les cas modifiés au cours du mois dernier.

La liste des cas sera mise à jour en temps réel avec les cas créés ou modifiés en dernier pendant la durée sélectionnée.

Fonctionnalités de recherche avancée

Tirez parti des capacités de recherche pour trouver rapidement les informations que vous souhaitez.

All Search / Contains

Les critères de recherche suivants sont disponibles pour chaque box :

Patient	Tout, Nom du patient, ID du patient
Case Box	Tous, Nom du cas, Nom du patient, ID du patient, Informations sur le formulaire, Nom du laboratoire

Order Box	Tous, Nom du cas, Nom du patient, ID du patient, Nom du laboratoire, ID de la commande
In Box	Tous, Nom du cas, Nom du patient, Nom de la clinique, ID de commande
Work Box	Tous, Nom du cas, Nom du patient, Informations sur le formulaire, Nom de la clinique, ID de commande
Case Talk	Nom du Case Talk (Contient), Nom du patient (Est égal)
Trash Box (Clinique)	Tous, Nom du cas, Nom du patient, Nom du laboratoire, Supprimé par
Trash Box (Laboratoire)	Tous, Nom du cas, Nom du patient, Nom de la clinique, Supprimé par

Vous pouvez sélectionner les critères de recherche et choisir entre la logique Contient et Est égal.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

Créer/Modifier/Cloner/Supprimer un cas

Création de cas

Créer un cas dans Case Box (Clinique)

1. Cliquez sur le bouton "Nouveau cas" dans le coin supérieur droit.

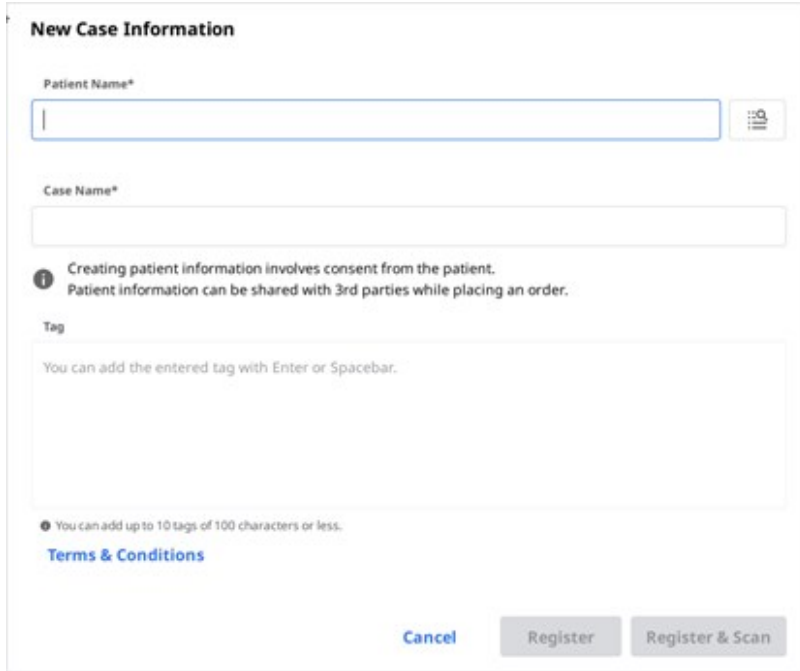

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Saisissez les informations de base, telles que le nom du patient et le nom du cas.
 - Si vous saisissez un nom qui ne figure pas dans la liste des patients, un nouveau patient sera ajouté.
 - Si vous saisissez un nom qui figure dans la liste des patients, vous pouvez le sélectionner dans la liste.
 - Si vous enregistrez un cas pour un patient existant, cliquez sur l'icône Liste de patients pour sélectionner un patient existant.



- Dans la boîte de dialogue Liste de patients, vous pouvez enregistrer un nouveau patient ou modifier les informations d'un patient existant.

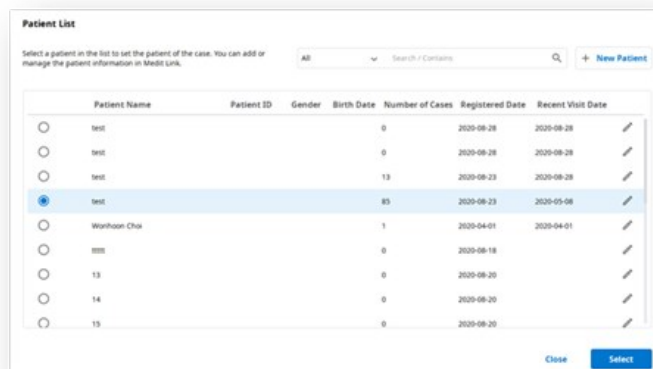

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

[+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Woripoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Le nom du cas est automatiquement saisi, mais vous pouvez toujours le modifier.

4. Cliquez sur "Enregistrer et scanner" pour terminer l'enregistrement du cas et procéder à la numérisation.
 - S'inscrire : Vous serez redirigé vers la page d'accueil. Cette fonction est utile lors de l'enregistrement de plusieurs cas.
 - Enregistrer et numériser : Passez à l'onglet Formulaire pour enregistrer les informations de formulaire pour le cas.

Créer un cas dans Work Box (Laboratoire)

1. Cliquez sur le bouton "Nouveau cas" dans le coin supérieur droit.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- A note at the bottom left: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (blue text) and "Register" (grey button).

2. Entrez ou sélectionnez le nom de la clinique.
3. Entrez le nom du patient et le nom du cas. Le nom du cas est automatiquement saisi, mais vous pouvez toujours le modifier.
4. Indiquez la date de livraison prévue en tenant compte de la date d'achèvement du travail.
5. Après avoir enregistré le cas, vous serez redirigé vers la page principale.

Modification des cas

Modifier un cas dans Case Box (Clinique)

1. Cliquez sur l'icône "Modifier" à côté du nom du cas.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Cliquez sur l'icône "Rechercher" pour modifier le nom du patient. Notez qu'il n'est pas possible de le modifier directement ; en revanche, vous pouvez rechercher un nom de patient par lequel vous souhaitez remplacer le nom actuel et vous pouvez modifier les informations du patient à partir de la liste.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)


	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Cochez le nom du patient par lequel vous souhaitez remplacer le nom actuel.
4. Pour créer un nouveau patient, appuyez sur le bouton "Nouveau patient".
5. Utilisez le bouton "Modifier" pour modifier les informations enregistrées sur le patient.
6. Cliquez sur "Appliquer" pour terminer le processus.

Modifier un cas dans Work Box (Laboratoire)

1. Cliquez sur l'icône "Modifier" à côté du nom du cas.

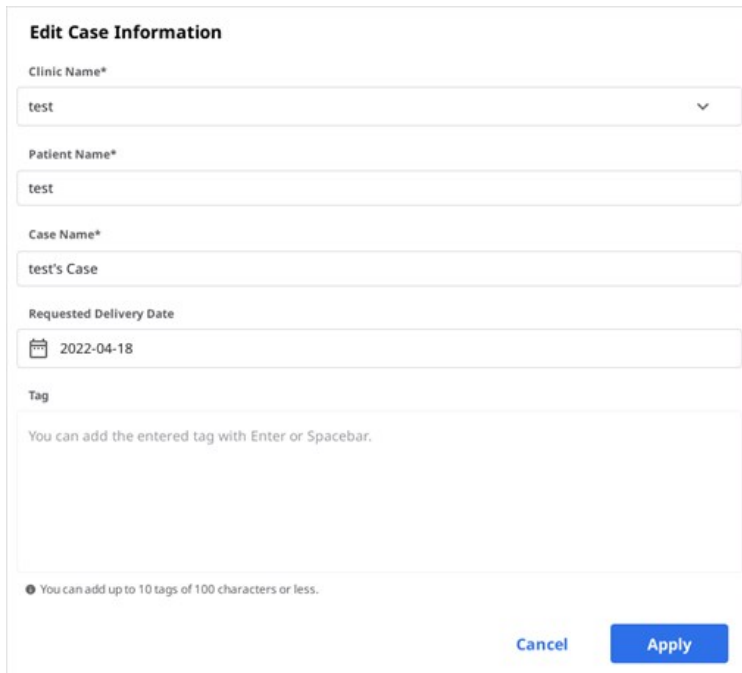

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Cliquez sur "Appliquer" une fois la modification terminée.

Note

Vous ne pouvez pas modifier les informations des cas reçus via la commande dans In Box.


Clonage de cas

Cloner un cas dans Case Box (Clinique)

1. Cliquez sur l'icône "Cloner" en haut de la page.



2. Il vous sera demandé quel type d'informations vous souhaitez cloner dans le nouveau cas.

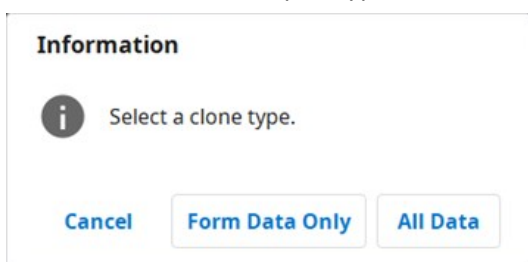

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Choisissez de reproduire uniquement les informations de formulaire ou toutes les données.
4. Lorsque le clonage est terminé, un cas nommé "[Nom du cas] - Clone" est créé.

Cloner un cas dans Work Box (Laboratoire)

1. Cliquez sur l'icône "Cloner" en haut de la page.



2. Dupliquez toutes les données pour créer un nouveau cas.
3. Lorsque le clonage est terminé, un cas nommé "[Nom du cas] - Clone" est créé.


Supprimer un cas

Supprimer un cas (Clinique et laboratoire)

1. Cliquez sur l'icône "Supprimer".



2. Cliquez sur "OK" pour supprimer le cas.

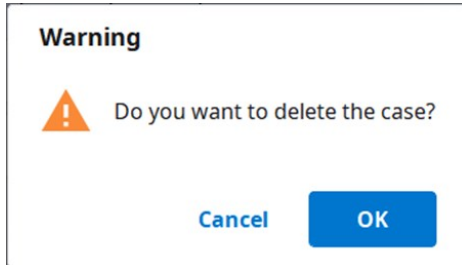

3. Les cas supprimés sont déplacés vers Trash Box et peuvent être récupérés si nécessaire.

Informations sur le formulaire

Vous pouvez saisir les informations du formulaire en fonction du programme connecté et du type de traitement.

Les informations que vous saisissez seront utilisées comme informations de base pour travailler sur les programmes de numérisation ou de CAD et pour passer commande.

Enregistrement des informations de formulaire dans Case Box

Entrer dans l'onglet Formulaire

1. Sélectionnez si vous allez saisir les informations de traitement par dent ou par arcade.
2. Sélectionnez Type – Méthode – Matériau – Teinte.
 - Si vous avez saisi des informations de manière incorrecte, vous pouvez revenir en arrière pour les sélectionner à nouveau.
 - Les informations sélectionnées sont automatiquement enregistrées dans la liste de commandes.
3. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer votre inscription.

Entrer dans l'onglet CAD

1. Sélectionnez l'une des options suivantes qui définira votre stratégie de numérisation : Dents/Multi-die flexible/Multi-die.
2. Sélectionnez le numéro de dent/arcade/numéro de die.
3. Définissez les paramètres des options détaillées et des opérations CAD.
4. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.
 - Les informations sélectionnées sont automatiquement enregistrées dans la liste de commandes.
5. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer votre inscription

Enregistrement des informations de formulaire dans Work Box

Entrer dans l'onglet Formulaire

1. Sélectionnez le programme de scan que vous souhaitez utiliser.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes qui définira votre stratégie de numérisation : Dents/Multi-die flexible/Multi-die.
3. Les méthodes peuvent différer selon le programme de scan sélectionné.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dents	O	O
Arcade	O	O
Multi-die flexible	X	O
Multi-die	X	O

4. Sélectionnez les numéros de dents, d'arcades ou de die pour le processus de numérisation.
5. Sélectionnez Type – Méthode – Matériau – Teinte.


- Si vous avez saisi des informations de manière incorrecte, vous pouvez revenir en arrière pour les sélectionner à nouveau.
 - Les informations sélectionnées sont automatiquement enregistrées dans la liste.
6. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer votre inscription.

Entrer dans l'onglet CAD

1. Sélectionnez l'une des options suivantes qui définira votre stratégie de numérisation :
Dents/Multi-die flexible/Multi-die.
2. Sélectionnez le numéro de dent/arcade/numéro de die.
3. Définissez les paramètres des options détaillées et des opérations CAD.
4. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.
 - Les informations sélectionnées sont automatiquement enregistrées dans la liste.
5. Cliquez sur "Enregistrer".

Connexion des dents en bridge

Il est possible de relier plusieurs dents en un bridge lorsque le même matériau est appliqué à plusieurs dents adjacentes. Cliquez sur l'icône de bridge à côté des dents sélectionnées pour les connecter ou les déconnecter.

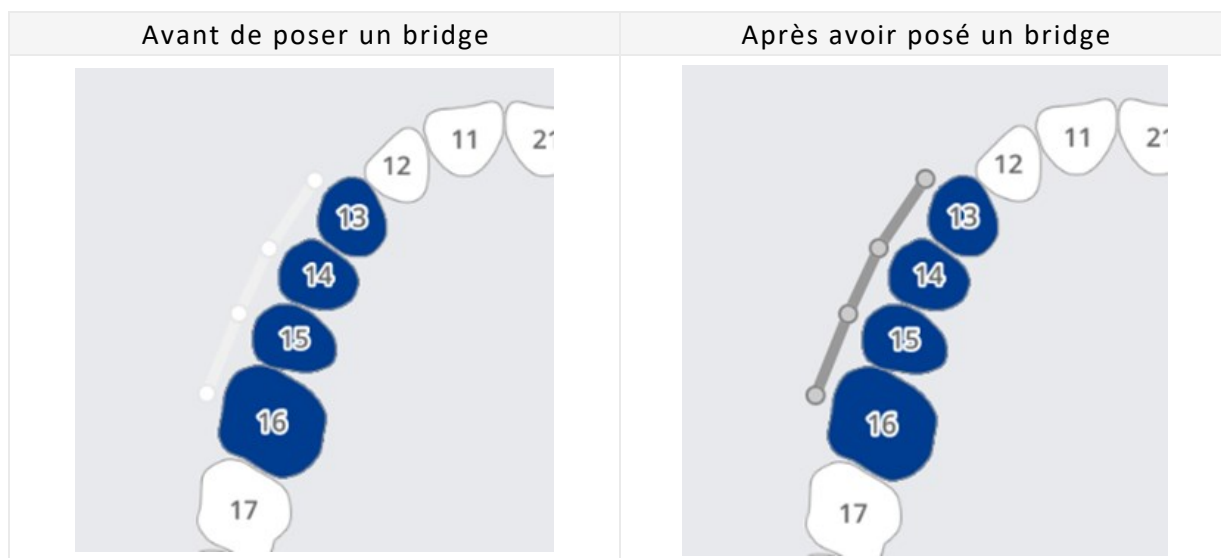

Définition des options de numérisation

Selon le programme avec lequel vous travaillez, diverses options de numérisation sont proposées. Les options de numérisation sélectionnées sont transmises à chaque programme de numérisation.

Medit Scan for Labs

Options générales

	Dents adjacentes	Marquez les dents préparées et adjacentes et transmettez ces informations au programme de numérisation.
--	------------------	---

	Antagoniste	Marquez automatiquement l'antagoniste et transmettez cette information au programme de numérisation.
	Articulateur	Affichez les options de sélection de l'articulateur dans le programme de numérisation.
	Marqueur de mouvement	Permet d'utiliser la stratégie de numérisation "Mouvement de la mâchoire" dans le programme de numérisation.

Options par dents

	Scanbody	Permet de définir une stratégie de numérisation des scanbody dans le programme de numérisation.
	Scan pré-op	Permet de définir une stratégie de numérisation d'un modèle pré-op dans le programme de numérisation.
	Scan du Wax-up	Permet de définir une stratégie de numérisation des wax-up dans le programme de numérisation.

Ajout aux favoris

Vous pouvez rapidement sélectionner un produit en l'enregistrant comme favori.

La liste des favoris enregistrés est gérée comme un modèle et peut être partagée via les fonctionnalités d'exportation et d'importation.

Ajouter aux favoris

1. Sélectionnez le numéro la dent.
2. Sélectionnez Type – Méthode – Matériau – Teinte.
 - Type – Méthode – Matériau – Les teintes peuvent être enregistrés comme favoris même s'ils ne sont pas tous sélectionnés.
3. Cliquez sur l'icône "Étoile".


4. Une combinaison des paramètres sélectionnés, à l'exception du numéro de dent, figure dans votre liste de recherche favorite.

Gérer les modèles favoris

Vous pouvez enregistrer, gérer et partager différents types de modèles.

Ajouter	Ajoute un nouveau modèle.
Renommer	Renomme le modèle actuel.
Supprimer	Supprime le modèle actuel.
Exporter	Exporte le modèle actuel vers un fichier.
Importer	Importe un fichier de modèle.

Travail sur la numérisation/CAD

Processus de numérisation

Sur la base des informations saisies, vous procédez à la numérisation.

1. Entrez/enregistrez les informations de traitement et sélectionnez les options de numérisation nécessaires.
2. Cliquez sur le bouton "Scan" dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Processus CAD

Medit Link est intégré à exocad.

CAD	Enregistrement des informations de traitement	Confirmation des informations sur le traitement	Exécution CAD directe	Importation des résultats CAD vers Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. Dans Paramètres > Définir le programme connecté, vous pouvez lier le programme CAD de votre choix dans la liste.
2. Entrez/enregistrez les informations de tâche et les options de conception dans l'onglet CAD.
3. Cliquez sur "CAD" dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
4. Le programme CAD lié est exécuté et les données sont envoyées automatiquement.
5. Enregistrez les résultats après avoir effectué la CAD.



Note

Medit Link pour Mac ne prend pas en charge la fonction de liaison avec CAD.

Obtenir les fichiers de résultats

Exporter les fichiers de résultats de numérisation

Outre le partage des résultats avec les partenaires via les commandes, Medit Link vous permet de stocker vos fichiers de résultats dans le format de fichier souhaité grâce à la fonction exporter.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☒ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close Export

Exporter les fichiers vers	Permet d'indiquer le chemin d'accès où vous souhaitez stocker les fichiers de résultats.
Nom du dossier	Le système crée un nouveau dossier et y stocke tous les fichiers de résultats. Le nom du dossier par défaut est défini par la règle d'attribution des noms. Mais vous pouvez modifier le nom du dossier directement. Vous pouvez définir la règle d'attribution des noms dans Paramètres > Options d'exportation > Règles pour le nom du dossier.
Nom du fichier	Définit le nom de fichier pour le résultat. La règle d'attribution des noms définit le nom de fichier par défaut. Mais vous pouvez modifier le nom du fichier directement. Vous pouvez définir la règle d'attribution des noms dans Paramètres > Options d'exportation > Règles pour le nom du dossier
Type de CAD	Sélectionnez le programme CAD à utiliser pour votre programme de conception. Medit Link ajustera les fichiers en fonction de cette sélection, ce qui vous permettra de poursuivre la conception sans alignement d'axe supplémentaire.
Format du maillage	Spécifie le format du fichier de maillage.
Format d'image	Spécifie le format des fichiers image exportés.


Compresser les fichiers	Comprime tous les résultats dans un seul fichier.
Combiner un maillage individuel	Combine le résultat du maxillaire ou de la mandibule avec la dent individuelle. Utile lorsque l'importation de plusieurs fichiers dans un programme n'est pas possible.
Exporter toutes les relations occlusales	Lorsque plusieurs résultats occlusaux sont générés à partir de l'application de numérisation, vous pouvez exporter tous les résultats occlusaux en même temps.
Enregistrer les informations du cas au format PDF	Permet d'enregistrer les informations sur le cas au format PDF avec le résultat.

Exportation de fichiers de résultats à partir de la liste de cas


Vous pouvez exporter les fichiers de résultats d'un cas ou de plusieurs cas simultanément à l'aide de l'option "Exporter" située au-dessus de la liste de cas dans Case Box et In Box.

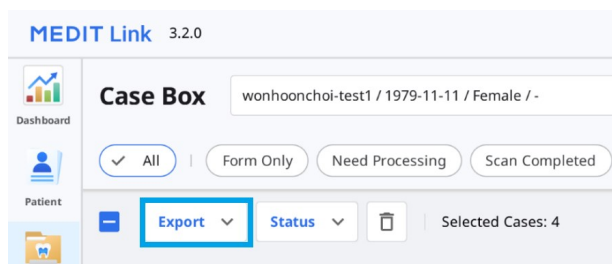

1. Allez dans In Box ou Work Box.
2. Sélectionnez dans la liste tous les cas pour lesquels vous souhaitez exporter des fichiers de résultats.

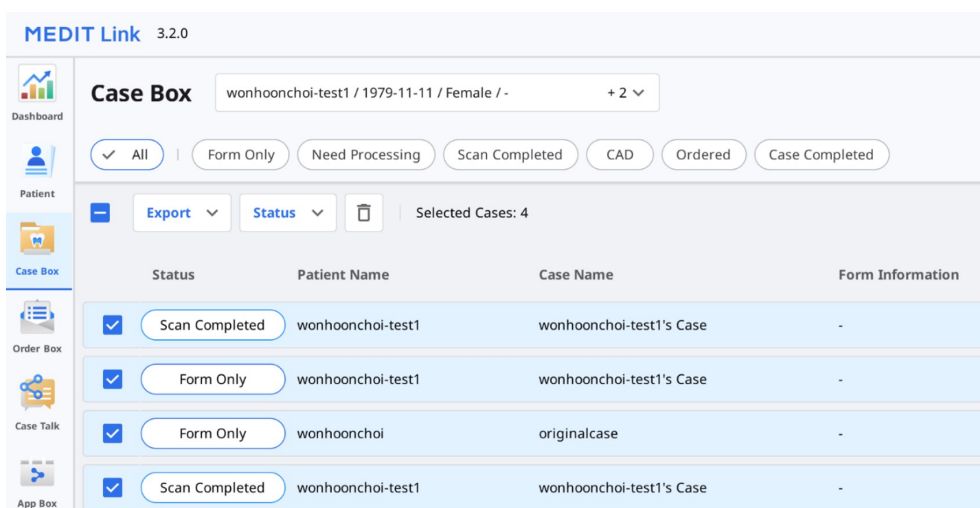

3. Cliquez sur "Exporter" et sélectionnez "Fichiers de résultats".

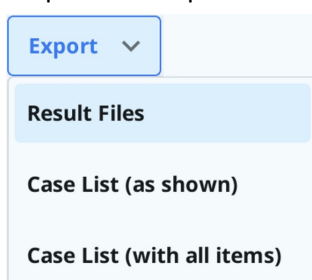

4. Définissez le dossier de destination, le type de fichier, le format du maillage et le format d'image et sélectionnez les options d'exportation dans l'onglet "Options".

The screenshot shows the 'Export Files in Selected Cases' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'Export Files To' field contains the path 'C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/'. The 'Folder Name' and 'File Name' fields both contain 'Case Creation Date - Case Name'. The 'Type' dropdown is set to 'Medit'. Under 'Mesh Format', the 'PLY' checkbox is checked, and 'Do not convert the attached files' is unchecked. Under 'Image Format', the 'PNG' radio button is selected. At the bottom, there are checkboxes for 'Compress Files', 'Combine Individual Mesh', 'Export All Occlusal Relationship', and 'Save Case Information as PDF'. 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.

Note


Les champs "Nom du dossier" et "Nom du fichier" ne sont pas modifiables lors de l'exportation de fichiers pour plusieurs cas. Le nom du dossier et le nom du fichier sont automatiquement créés selon les règles que vous avez définies pour les options "Règle pour le nom du dossier" et "Règle pour le nom du fichier" dans Paramètres > Options d'exportation.

5. Cliquez sur "Exporter".
6. Cliquez sur "Oui" pour ouvrir le dossier dans lequel les fichiers sont enregistrés.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Question'. It contains a question mark icon and the text: 'Exporting successfully completed. Do you want to open the folder containing the exported file?'. There are 'No' and 'Yes' buttons at the bottom right.

Exportation des fichiers de résultats à partir du Visualiseur de fichiers

Vous pouvez exporter les fichiers de résultats de numérisation d'un cas à l'aide de l'icône "Exporter" située dans le coin supérieur droit de l'onglet Visualiseur de fichiers.

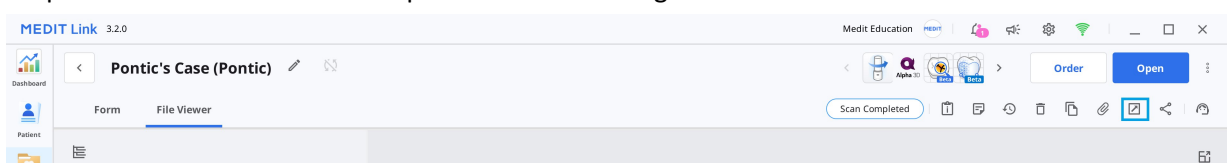

1. Allez dans In Box ou Work Box.
2. Cliquez pour ouvrir un cas de la liste.
3. Cliquez sur l'icône "Exporter" dans le coin supérieur droit de l'onglet Visualiseur de fichiers.



4. Définissez le dossier de destination, le nom du dossier, le nom du fichier, le type de fichier, le format du maillage et le format de l'image, et sélectionnez les options d'exportation dans l'onglet "Options".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. Dans l'onglet "Liste des fichiers", vous pouvez sélectionner les fichiers nécessaires au cas en désélectionnant les fichiers inutiles.

Export Files in This Case

Options File List

☒ [Icon]

☒ [Icon] Maxilla

- ☒ Base

☒ [Icon] Mandible

- ☒ Base

☒ [Icon] Occlusion

- ☒ First Occlusion
- ☒ Second Occlusion

☒ [Icon] Dynamic Occlusion


- ☒ Free
 - ☒ Maxilla
 - ☒ Mandible

☒ [Icon] Face Scan Data

- ☒ Face Scan Data


Close Export

6. Cliquez sur "Exporter".
7. Cliquez sur "Oui" pour ouvrir le dossier dans lequel les fichiers sont enregistrés.

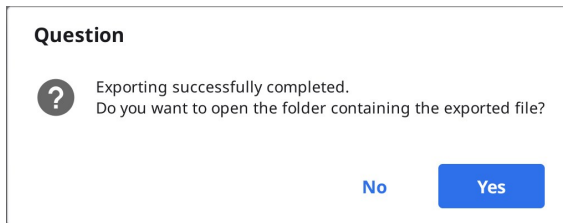

Exportation de fichiers de résultats depuis l'arborescence des données


Un ou plusieurs fichiers d'un groupe de données spécifique peuvent être exportés à partir du menu étendu du visualiseur de fichiers.

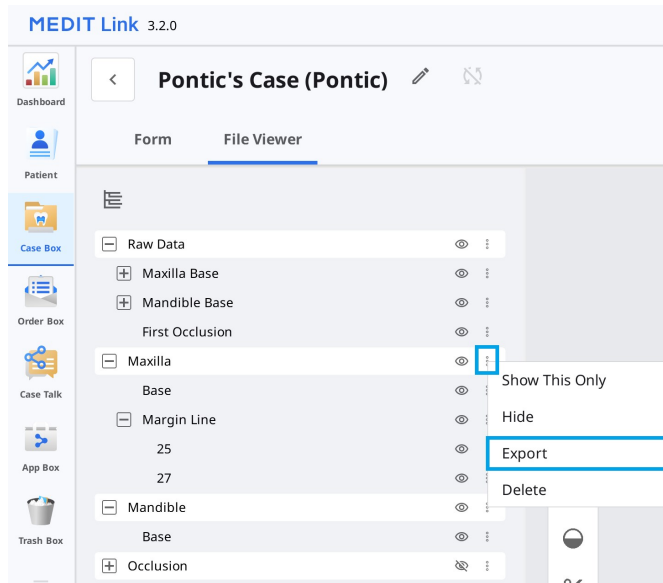

1. Allez dans In Box ou Work Box.
2. Cliquez pour ouvrir un cas de la liste.
3. Cliquez sur l'icône des trois points à côté du groupe de données ou d'une entité dans l'arborescence des données de l'onglet Visualiseur de fichiers.

...

4. Cliquez ensuite sur "Exporter".

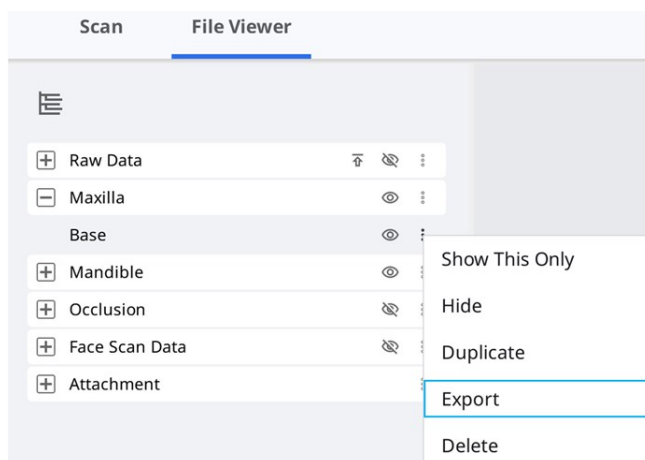

5. Définissez le dossier de destination, le nom du dossier, le nom du fichier, le type de fichier, le format du maillage et le format de l'image, et sélectionnez les options d'exportation dans l'onglet "Options".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Comme vous pouvez le voir, seuls les fichiers que vous avez choisis dans l'arborescence des données sont sélectionnés dans la Liste des fichiers.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Cliquez sur "Exporter".
8. Cliquez sur "Oui" pour ouvrir le dossier dans lequel les fichiers sont enregistrés.

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Exporter la liste de cas au format CSV


Medit Link permet d'exporter la liste des cas au format CSV.

Vous pouvez exporter la liste des cas avec des informations de base et gérer facilement les cas.

1. Allez dans In Box ou Work Box.
2. Sélectionnez les cas que vous souhaitez exporter.

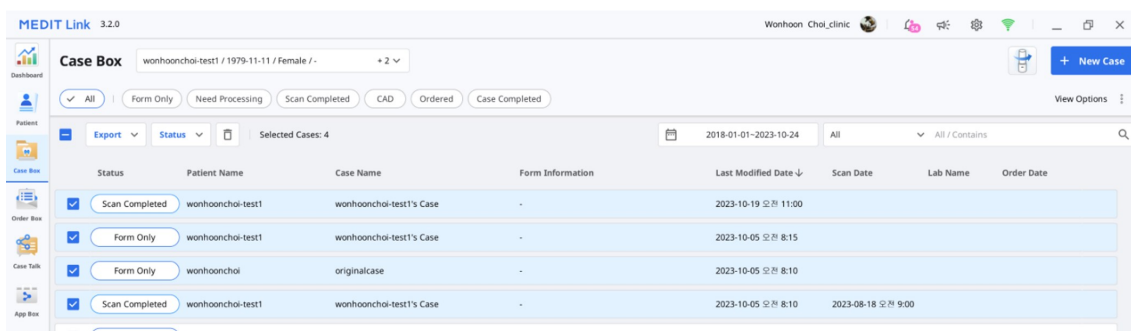

3. Cliquez sur "Exporter" et sélectionnez "Liste de cas (comme affiché)" ou "Liste de cas (avec tous les éléments)".

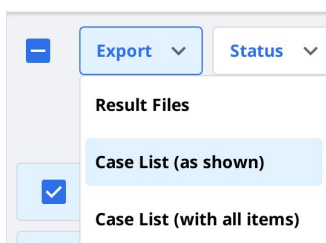

Note

Liste de cas (comme affiché) : Permet d'exporter la liste des cas avec les éléments actuellement affichés à l'écran. Allez dans Options de visualisation > Éléments du tableau pour afficher ou masquer les éléments comme vous le souhaitez.

Liste de cas (avec tous les éléments) : Permet d'exporter la liste des cas avec tous les éléments, y compris le statut, le nom du cas, la date de naissance, les informations du formulaire, la date modifiée, la date de numérisation, la date de commande et le nom du laboratoire.

4. Définissez le chemin d'accès et le nom du fichier, puis enregistrez la liste.
5. La liste de cas est enregistrée comme un fichier CSV.

Exporter la ligne de marge


Medit Scan for Clinics fournit la fonction de création de la ligne de marge et Medit Link peut transférer la ligne de marge au programme CAD.

Exporter la ligne de marge en tant que couleur

En général, Medit Link convertit la ligne de marge en couleur et exporte le résultat avec le maxillaire ou la mandibule ensemble. Vous pouvez créer la ligne de marge dans leur CAD en faisant référence aux informations de couleur.

Exemple :

Maxillaire

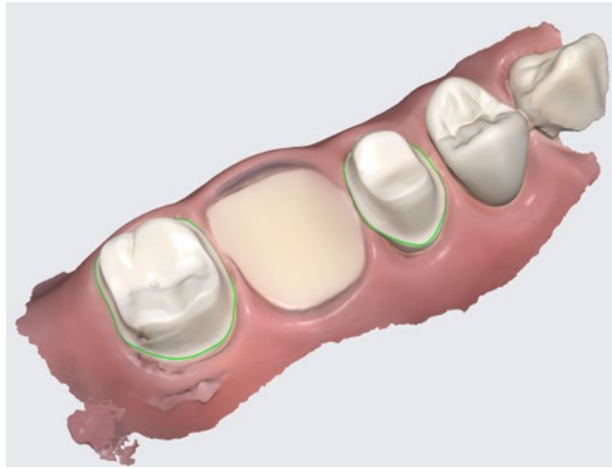

Résultat avec les lignes de marge comme information de couleur

Note

Cette fonction est disponible pour les formats qui contiennent des informations sur les couleurs, tels que meditMesh, OBJ et PLY. La ligne de marge ne se convertit pas en STL.

Note


Type de CAD et 3shape ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Exporter la ligne de marge en tant que fichier

Dans le cas d'Exocad, Medit Link exporte la ligne de marge vers "~margin.xyz" qui peut être importée directement dans Exocad.

Vous pouvez utiliser ce fichier dans exocad sans travail supplémentaire.

Exemple :

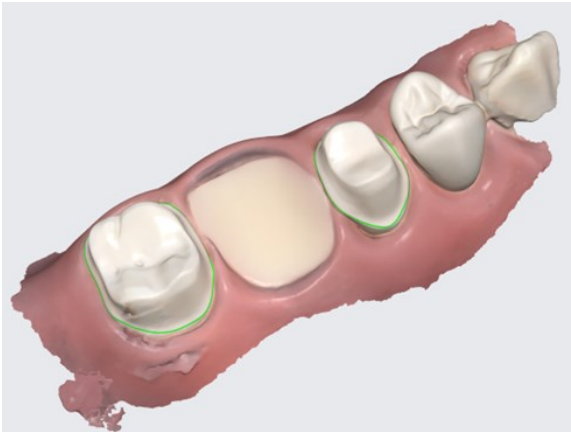Maxillaire	Ligne de marge
 Résultat avec les lignes de marge comme information de couleur	 La ligne de marge est exportée sous forme de fichiers individuels

Télécharger des fichiers depuis Medit Link Web

Medit Link fournit une fonction de téléchargement.

Si vous souhaitez obtenir les fichiers de résultats sans installer l'application Medit Link, vous pouvez télécharger les fichiers à partir du service Web Medit Link.

Note


Les données doivent être téléversées dans le cloud Medit pour télécharger les fichiers à partir du Web.

La fonction de téléchargement est disponible dans le menu suivant du service Web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Vous trouverez le bouton "Télécharger" en haut à droite.

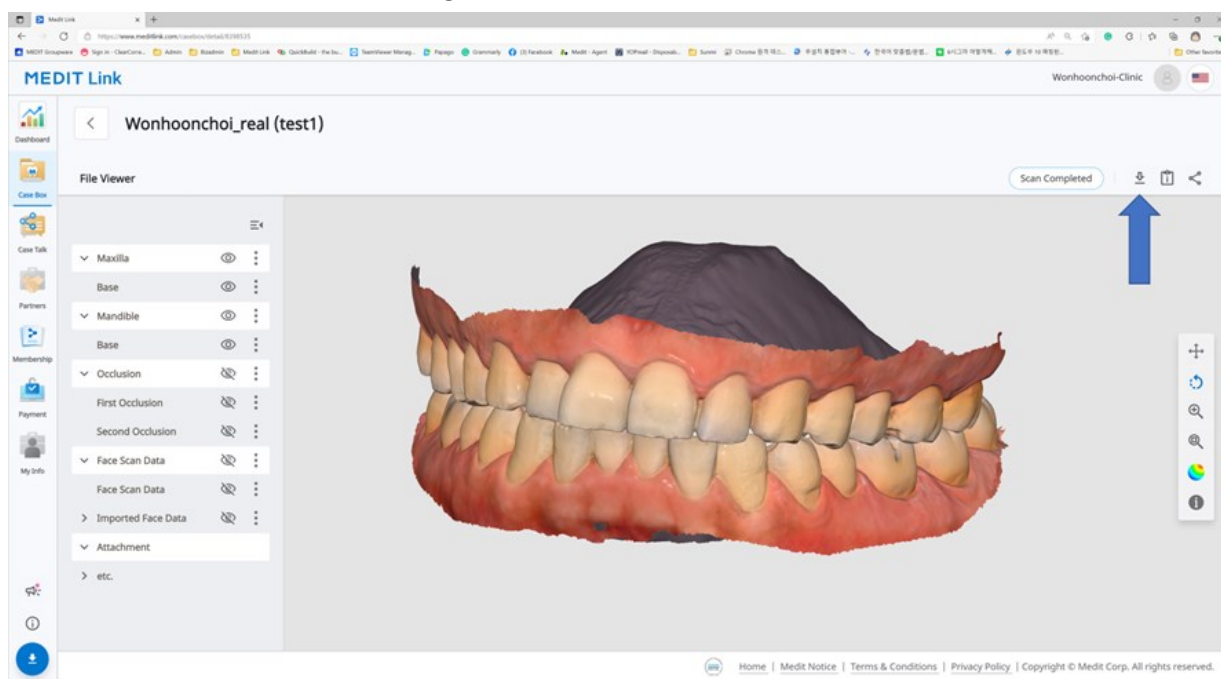

Web Viewer

Lorsque vous partagez le cas à l'aide de Case Talk, vous pouvez définir si vous souhaitez autoriser ou non le téléchargement.

Si vous cochez « Accorder l'autorisation de téléchargement » et partagez le cas, tous les utilisateurs qui se connectent au lien partagé peuvent télécharger les fichiers.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

Dans le Web Viewer, vous trouverez l'icône "Télécharger" en haut à droite.

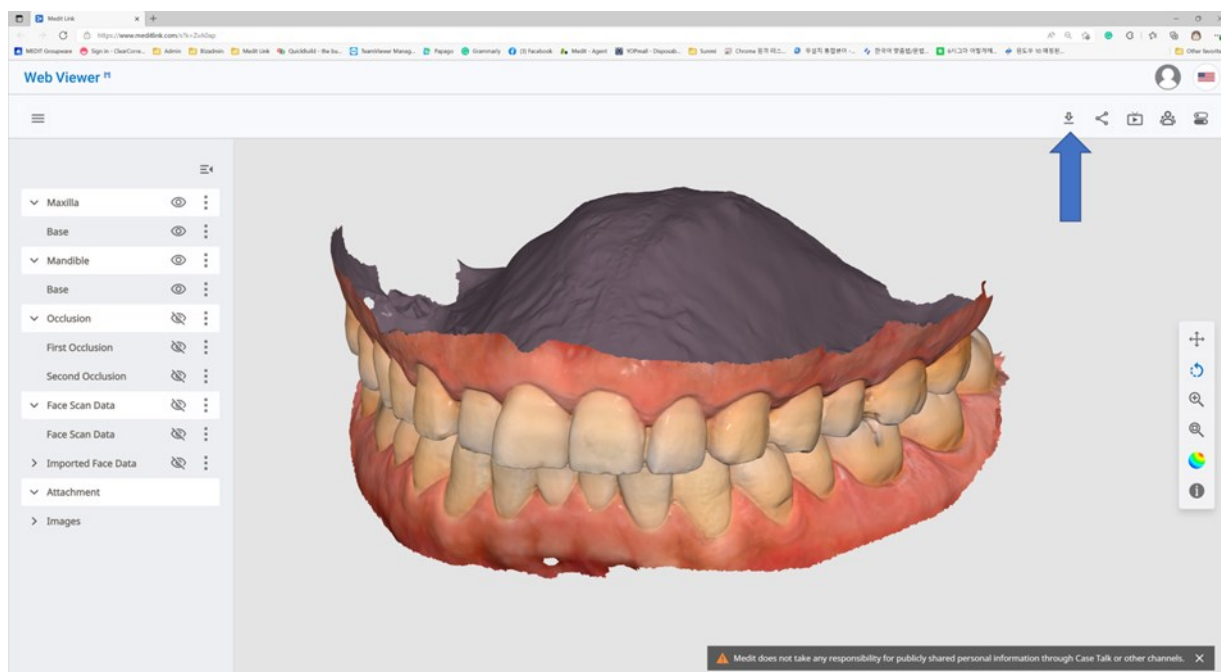

1. Cliquez sur "Télécharger".



2. Sélectionnez le format de maillage dans la boîte de dialogue de téléchargement.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) **OK**

3. Puis cliquez sur "OK".

Commander/gérer les commandes

Vous pouvez facilement commander un cas avec des données acquises à partir de programmes connectés et jointes par l'utilisateur.

Commande de cas

Vous pouvez passer une commande pour vos partenaires dans Case Box.

1. Cliquez sur le bouton «Commander».
2. Vérifiez les informations requises pour votre commande.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Sélectionnez un partenaire.
4. Vérifiez les informations sur le produit dans l'onglet Liste de commandes.
 - Vous pouvez décider de partager ou non le nom du patient.
5. Cochez les fichiers à commander dans l'onglet Liste des fichiers.
6. Saisissez la date de livraison souhaitée.
 - La valeur par défaut est fixée à 7 jours après la date de commande.
7. Vous pouvez ajouter des notes et des tags à votre partenaire pour souligner des détails spécifiques.
8. Lorsque plusieurs résultats occlusaux sont générés à partir de l'application de numérisation, vous pouvez envoyer tous les résultats occlusaux en une seule fois en cochant « Commander toutes les relations occlusales ».
9. Poursuivez votre commande.

Confirmer la commande (In Box)

- Acceptez la commande dès sa réception.
- Les commandes acceptées seront transmises à Work Box.

Annuler une commande (Order Box)

- Vous pouvez annuler une commande avant que votre partenaire ne l'accepte.
- Les cas annulés peuvent être commandés de nouveau.

Rejeter une commande (In Box)

- Vous pouvez rejeter une commande reçue.
- Les cas rejetés peuvent être commandés de nouveau.

Vérification des cas commandés

Vous pouvez vérifier les détails du cas que vous avez commandé à partir de Order Box dans le compte de la clinique. Vous pouvez également vérifier le cas que vous avez reçu du In Box dans le compte laboratoire.


No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informations de commande	Les informations qui peuvent être incluses dans la commande sont les suivantes : ID de commande/nom du patient/nom du compte/date de numérisation/date de commande/date de livraison/date d'échéance de la livraison/notes. Vous pouvez vérifier les détails du produit commandé et les informations sur la livraison.
Liste de commande	La liste de commandes affiche les détails du produit commandé.
Expédition	Entrez/vérifiez les informations d'expédition.

Saisie des informations d'expédition (In Box)

Saisissez les informations d'expédition du cas terminé et commencez l'expédition.

1. Cliquez sur l'onglet Expédition.
2. Saisissez les informations d'expédition et cliquez sur "Enregistrer".

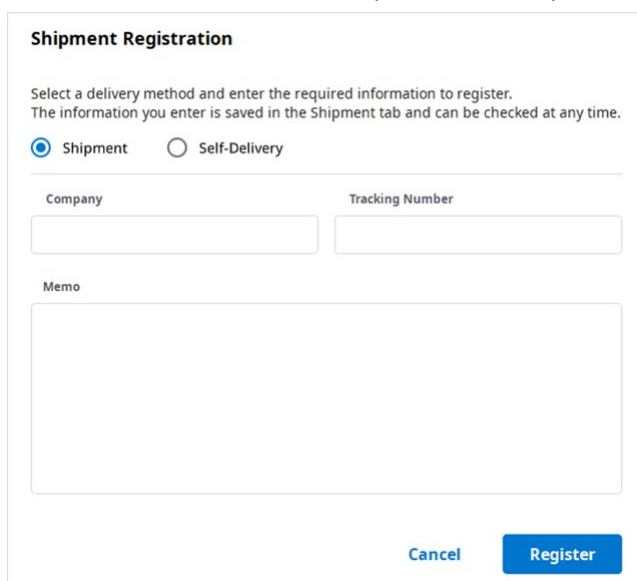

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Les informations saisies sont envoyées à votre partenaire.

Gestion de la date de livraison

Vous pouvez définir la date de livraison prévue lors de la commande, et cette information sera transmise à votre partenaire.

Définition de la date de livraison demandée (compte clinique)

- Lorsque vous commandez depuis Case Box, vous pouvez entrer la date de livraison demandée.

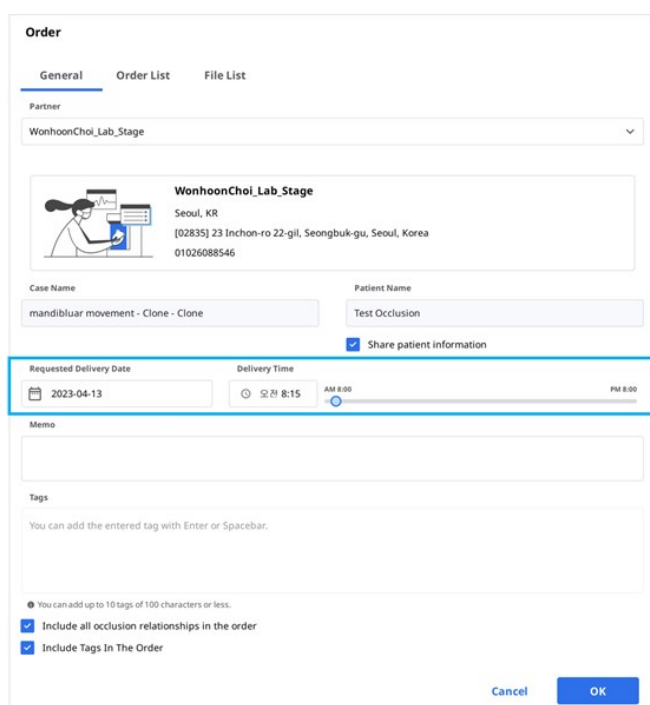

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- La valeur par défaut est de 7 jours après la date de la commande.

- Entrez la date/heure à laquelle vous souhaitez recevoir les produits et passez la commande.
- Vous pouvez facilement régler l'heure à l'aide du curseur.

Définition de la date de livraison prévue (compte clinique)

- Vous pouvez entrer la date de livraison prévue pour le cas commandé depuis In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main window displays the order details for 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic'. The 'Expected Delivery Date' is set to 2022-10-01 at 10:30. The 'Order List' table shows three items: Implant Crown, Cementation Ty., Multi-Layered Zirconia, None Sh., 0.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty..	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

1. Vérifiez la date de livraison demandée avec le partenaire et reprogrammez-la à l'aide du bouton "Modifier".



2. Indiquez la date de livraison prévue en tenant compte du jour ouvrable réel. Si nécessaire, vous pouvez également laisser un commentaire.
3. Cliquez sur "Appliquer".

The screenshot shows a date selection dialog. The calendar displays March 2022, with the 17th selected. The delivery time is set to 11:45 AM. The comment field is empty.

4. La date de livraison prévue et les notes seront transmises avec la commande.
 - Vous pouvez vérifier la date et les notes dans Order Box.
 - Vous pouvez modifier la date de livraison prévue et les modifications seront transmises à votre partenaire.
5. Vous pouvez consulter l'historique du cas en cliquant sur le bouton "Historique".



Terminer le cas

Terminer (Work Box / In Box)


Une fois toutes les tâches accomplies, cliquez sur "Terminé" pour terminer le cas.

Terminer un cas à partir des détails du cas

Vous trouverez l'icône des trois points à droite du bouton " Ouvrir " ou " Numériser à nouveau ".



Terminez le travail en cliquant sur l'icône et en sélectionnant "Done".

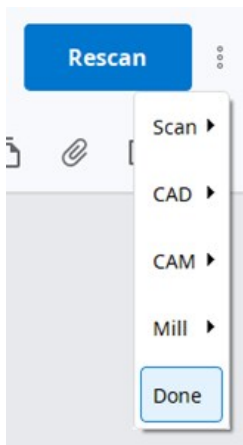

Terminer les cas multiples à partir de la liste de cas

1. Allez à Work Box.
2. Sélectionnez tous les cas à terminer.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export ▾ | Status ▾ | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Cliquez sur "Statut" et sélectionnez "Done".

Terminer (Case Box / Order Box)

Une fois le cas terminé par le laboratoire, la clinique doit confirmer le cas pour terminer l'ensemble du processus de commande.

La clinique peut trouver le bouton "Confirmer la livraison" dans Order Box si le laboratoire a terminé son travail.


En cliquant sur ce bouton, l'ensemble du processus de commande s'achève et le statut du cas passe à "Cas terminé".

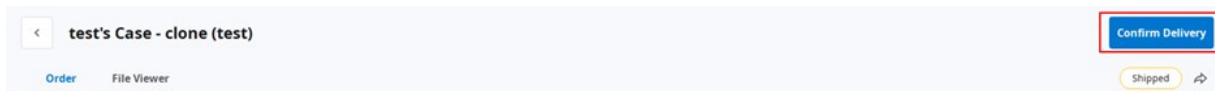

Terminer un cas non commandé dans Case Box

Pour les cas qui ne sont pas commandés au laboratoire, vous pouvez terminer ces cas à partir de Case Box.

1. Allez à Case Box.
2. Sélectionnez le cas que vous souhaitez terminer.

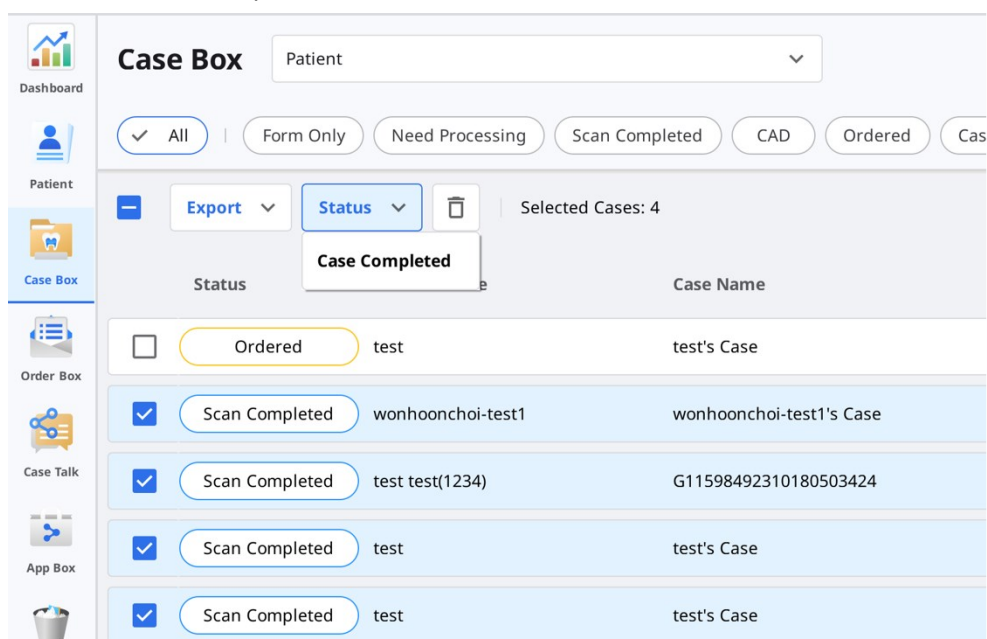


3. Cliquez sur "Statut" et sélectionnez "Case Completed".

Communiquer à l'aide de tags

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires pour votre cas à l'aide de tags et les envoyer à vos partenaires.

Ajouter des tags lors de la création d'un nouveau cas

Vous pouvez saisir des tags lorsque vous créez un nouveau cas ou lorsque vous modifiez les renseignements sur le cas.

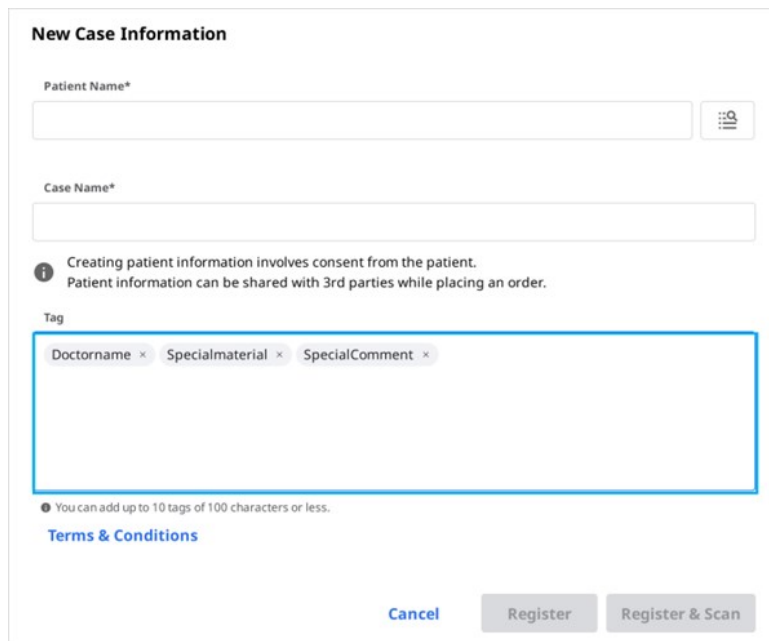

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Vous pouvez facilement rechercher et sélectionner des tags que vous avez déjà utilisés.

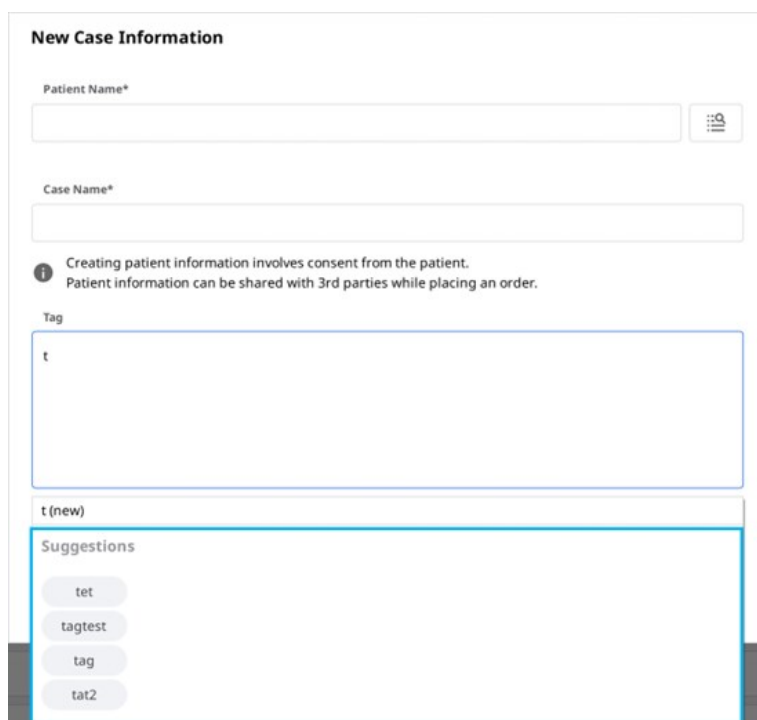

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Ajouter des tags lors de la commande

Vous pouvez vérifier et modifier les tags dans la boîte de dialogue Commande lors de la commande.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Vérifier les tags dans Détails de cas

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo

Tags
Dr_Name × Worker_Name ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Save

