

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

Introducere	6
Medit Link	6
Prezentare generală Servicii	6
Serviciu cloud	7
Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă	7

Medit Link > Instalare

Cerințe sistem	8
Cerințe sistem pentru Windows	8
Cerințe sistem pentru macOS	8
Cerințe de sistem pentru serviciul web	8
Recomandat pentru browsere	8
Minimum pentru dispozitive mobile	8
Instalare pe Windows	9
Instalare pe macOS	12

Medit Link > Noțiuni introductive

Înregistrare și conectare	16
Site web Medit Link	16
Înregistrează-te	16
Pagina de autentificare și de bun venit	18

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	20
Prezentare generală Dashboard	20
Medit Insights	20
Abonează-te la Medit Insights	21
Dezabonare Medit Insights	22
Patient	23
Caută pacient	23
Case Box/Work Box	24
Filtrare caz	24
Filtrează după pacient	24
Filtrează după statut	25
Filtrare după durată	26
Filtrare după căutare	26
Detalii caz	26
Order Box/In Box	28
Detalii comandă	28
File în Order Box/In Box	28
Case Talk	29
Crearea unui Case Talk	29
Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare	30
Detalii Case Talk	31
Web Viewer	32
Adnotare	33
Comentarii	34
Partajarea ecranului în timp real	34
Arbore de date	35

Controale arbore de date	
Controalele modelului 3D	35
Partners	37
Caută parteneri	37
Lista mea de parteneri	37
Invitarea partenerilor	38
Membership	39
Abonament	39
Planul meu	40
Spațiu de stocare Cloud	40
Abonează-te	41
Dezabonare	43
Informații facturare	44
Cum să adaugi o metodă de plată	44
Cum să schimbi o metodă de plată	46
Răscumpără	47
Înregistrează codul răscumpărării	47
Activează codul de răscumpărare	48
My Info	49
Contul meu	49
Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)	49
Scannerul meu	50
Alt meniu	51
Aviz & actualizare	51
Medit informații	51
Descarcă Medit Link App	51

Medit Link > Medit Link App

Prezentare generală	53
Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.	53
Bară de titlu	54
Informațiile mele	54
Notificări	54
Aviz & actualizare	55
Setări	55
Starea rețelei	56
Setări	58
General	58
Managementul stocării	59
Setează perioada	59
Stocare locală	59
Spațiu de stocare Cloud	60
Setează programul conectat	60
Opțiuni de export	61
Instrument de conversie a cazurilor	62
Exportă caz	62
Importă caz	64
Opțiuni proxy	65
Despre	65
Manualul utilizatorului	66
Meniu	67
Dashborad	67
Patient	67
Adaugă pacient nou	68
Șterge pacienți	68
	68

Combină pacienți	
Case Box/Work Box	69
File în Case Box/Work Box	70
Funcții în Case Box/Work Box	70
Order Box/In Box	71
File în Order Box/In Box	72
Case Talk	72
App Box	72
Trash Box	73
Manager sincronizare caz	73
Încarcă	74
Descarcă	74
Medit informații	75
Vizualizare fișier	76
Arbore de date	76
Instrumente de control model	76
Control model 3D	76
Control imagine 2D	77
Instrumente de funcție	78
Captura imaginii și Memo	78
Captură orto	78
Umple găuri	79
Decupare	80
Optimizează alinierea ocluziei	82
Mișcarea mandibulară	83
Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier	84
Cum se gestionează mai multe rezultate	84
Vizualizează opțiuni	86
Statut filtre	86
Vezi tip	87
Grupare	87
Sortare	87
Filtrare și căutare	89
Filtrează după pacient	89
Filtrează după dată	90
Capacități de căutare avansată	90

Medit Link > Flux de lucru

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz	92
Crearea de cazuri	92
Creează un caz în Case Box (Clinică)	92
Crearea unui caz în Work Box (Laborator)	93
Editare cazuri	93
Editare cazuri în Case Box (Clinică)	93
Editează cazuri în Work Box (Laborator)	94
Clonarea cazurilor	95
Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)	95
Clonarea cazului în Work Box (Laborator)	95
Ștergerea cazurilor	95
Șterge caz (clinică și laborator)	96
Informații formular	97
Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box	97
Introdu în fila Formular	97
Introdu în fila CAD	97
Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box	97

Introdu în fila Formular	
Introdu în fila CAD	98
Conectarea dinților în punte	98
Setarea opțiunilor de scanare	98
Medit Scan for Labs	98
Opțiuni generale	98
Opțiuni în funcție de dinți	99
Adăugare la favorite	99
Adaugă la favorite	99
Gestionează șabloanele favorite	99
Lucrează la scanare/CAD	100
Proces de scanare	100
Proces CAD	100
Obține fișierele de rezultate	101
Exportă fișierele de rezultate ale scanării	101
Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor	102
Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier	103
Exportă rezultate fișiere din Arborele de date	105
Exportă lista de cazuri ca CSV	107
Exportă Linia marginală	107
Exportă linia marginală ca o culoare	107
Exportă linia marginală ca fișier	108
Descarcă fișiere de pe Medit Link Web	108
Case Box/Work Box	109
Web Viewer	109
Comandă/gestionează comenzi	112
Comandarea cazurilor	112
Confirmă comanda (In Box)	112
Anulează comanda (Order Box)	113
Refuză comanda (In Box)	113
Verificarea cazurilor comandate	113
Introducerea informațiilor despre expediție (In Box)	113
Gestionarea datei de livrare	114
Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)	114
Finalizarea cazului	115
Complet (Work Box/In Box)	116
Completează un caz din detaliile cazului	116
Completează cazurile multiple din lista de cazuri	116
Complet (Case Box/Order Box)	116
Termină un caz necomandat în Case Box	117
Comunică folosind etichete	118
Adaugă etichete la crearea unui caz nou	118
Adaugă etichete la comandă	118
Verifică etichetele de pe Detaliile cazului	119

Introducere

Medit Link

Medit Link este un instrument de colaborare conceput pentru a facilita comunicarea între clinici și laboratoare pentru a oferi un flux de lucru optimizat pentru fiecare parte.

Oferă funcții diferențiate în funcție de tipul și permisiunile fiecărui cont. Programul oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat pentru gestionarea fluxului de lucru, de la scanarea cu scanere orale și modele, comandarea cazurilor și proiectarea și producerea de proteze.

Medit Link este alcătuit dintr-un serviciu web și o aplicație de calculator.

Prezentare generală Servicii

		Web	Aplicație
		• Înregistrează-te și gestionează contul • Caută • Caută și gestionează parteneri • Partajează cazuri prin Web Viewer cu un link partajabil • Accesează cazurile realizate din aplicație • Gestionează comenzile	• Introdu informații formular • Scanează • Gestionează comenzile • Conectare cu CAD • Gestionează pacienți
Clinică	Administrator	Caută și gestionează partenerii și clinicile tale și partajează cazuri. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Introdu informații despre formulare, scanează, creează legături cu CAD, plasează comenzi și gestionează pacienții. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membru	• Patient • Case Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Laborator	Administrator	Caută și gestionează partenerii și laboratorul tău și partajează cazuri. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Introdu informații despre formulare, scanează, conectează cu CAD și gestionează comenzile. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membru	• Work Box • Case Talk • My Info	• Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Serviciu cloud

Medit Link susține încărcarea/descărcare automată a bazelor de date și a fișierelor prin AWS (Amazon Web Services).

Datele stocate în cloud sunt sincronizate automat cu computerele mai multor utilizatori din organizație, astfel încât aceștia să poată accesa aceleași date de pe orice computer în orice moment. Backup-ul și recuperarea bazate pe cloud îți păstrează toate datele în siguranță. Îți păstrează datele în siguranță chiar și în cazul pierderii de date din cauza unei defecțiuni bruște a computerului.

Serviciul cloud permite stomatologilor și laboratoarelor partenere să partajeze rapid datele fără a mai fi nevoie să trimită e-mailuri sau să transfere manual scanările. Toate datele, inclusiv informațiile despre pacienți, sunt criptate, stocate și transmise în condiții de siguranță. Medit respectă legile și reglementările medicale, cum ar fi HIPAA și GDPR.

Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă

Medit Link oferă sistemul său de comandă.

- Medit Link permite utilizatorilor să stabilească parteneriate între stomatologi și laboratoare dentare și să facă schimb de date rapid și ușor.
- Poți verifica și gestiona starea comenzii.

Cerințe sistem



Aviz

Consultă cerințele de sistem pentru Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs dacă dorești să folosești software-ul de scanare cu scannerul tău.

Cerințe sistem pentru Windows

	Laptop & Desktop
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz sau mai mare
RAM	16 GB sau mai mare
Grafice	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) sau mai mare / sau o placă video AMD echivalentă
OS	Windows 10 64 Bit (indisponibil în 32 Bit) sau mai mare

Cerințe sistem pentru macOS

	Mac
Procesor	M1 cu 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB sau mai mare
OS	Monterey 12

Cerințe de sistem pentru serviciul web

Recomandat pentru browsere

	Browsere
Calculator	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pentru dispozitive mobile

	Android	iOS
Dispozitiv	Galaxy S7 echivalent sau mai mare	iPhone 7 echivalent sau mai mare
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB sau mai mare	2 GB sau mai mare
AP	Peste Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalare pe Windows

Medit Link este instalat ca un pachet cu programele de achiziție de scanare - Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs.


1. Lansează Medit_LinkSetup.exe.
2. Selectează o limbă pentru instalare.
3. Selectează folderul pentru a instala Medit Link. Citește și acceptă termenii și condițiile de licență și fă clic pe „INSTALEAZĂ”.

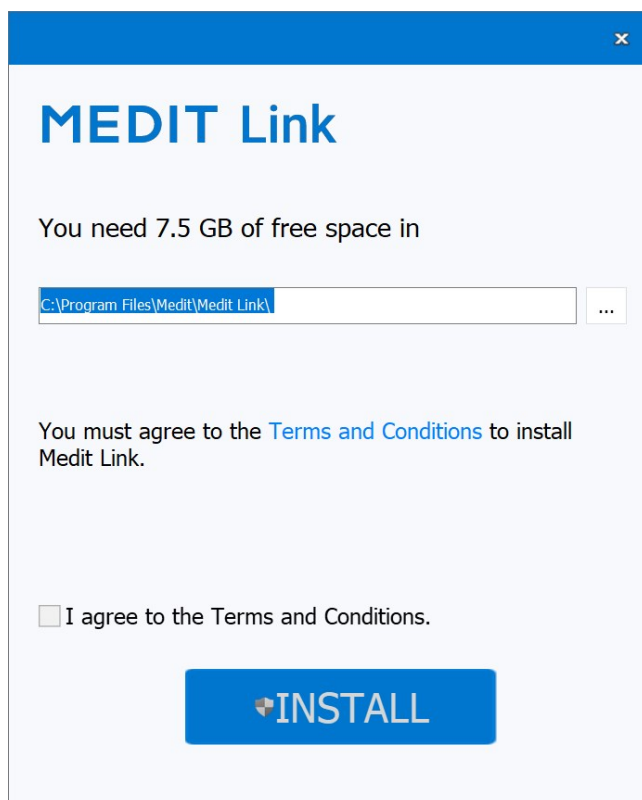

4. Asigură-te că cablul scannerului este deconectat de la computer înainte de a trece la pasul următor. Este posibil ca instalarea să nu continue dacă scannerul este conectat la PC.
5. Programul va fi instalat automat și poate dura câteva minute. Nu opri sau scoate din priză calculatorul până când instalarea nu este finalizată.

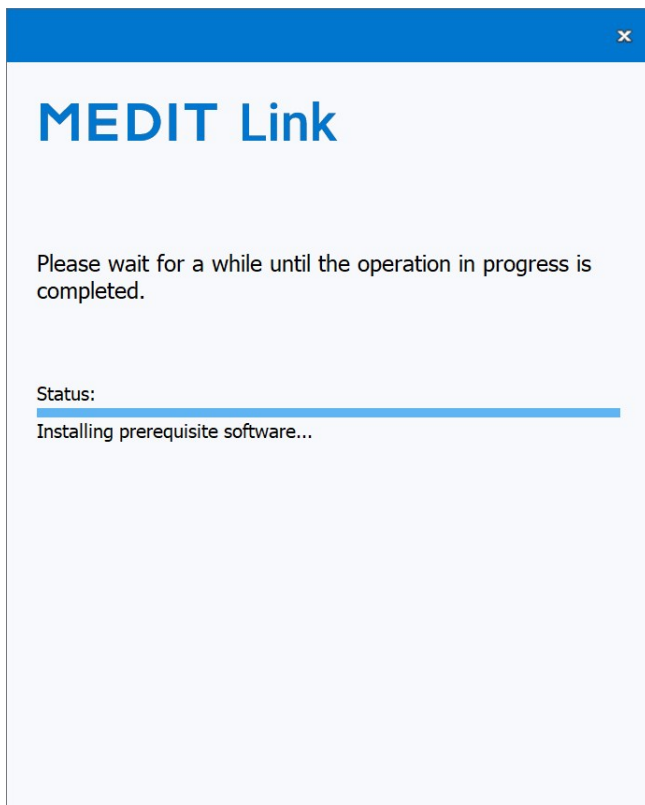

6. Te rugăm să repornești calculatorul după finalizarea instalării. Poți continua fără a reporni calculatorul dacă nu ai scannerul.

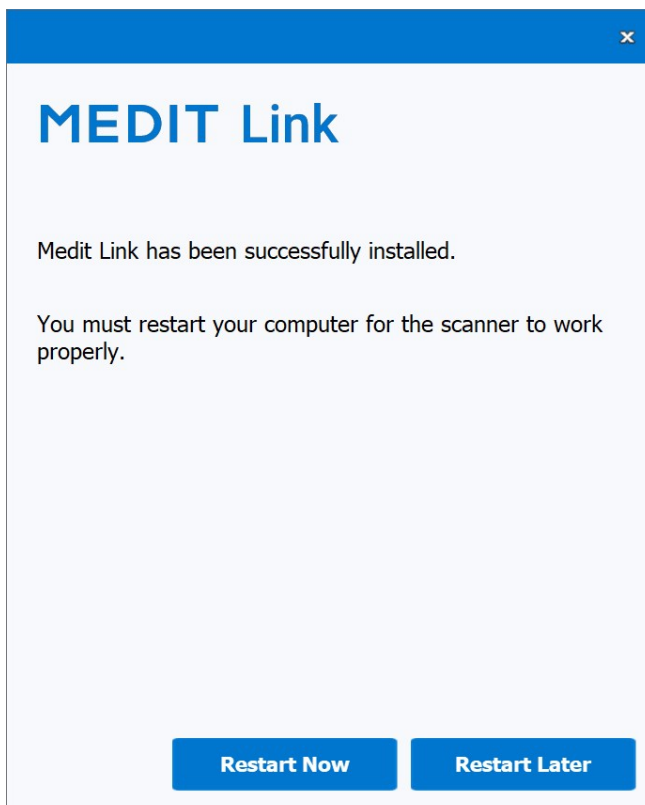


Dacă nu repornești calculatorul după finalizarea instalării, este posibil ca scannerul să nu funcționeze corect.


Instalare pe macOS

Medit Link este instalat ca un pachet cu Medit Scan for Clinics.


1. Rulează Medit_Link_x.x.x.pkg și clic pe „Continuă.”

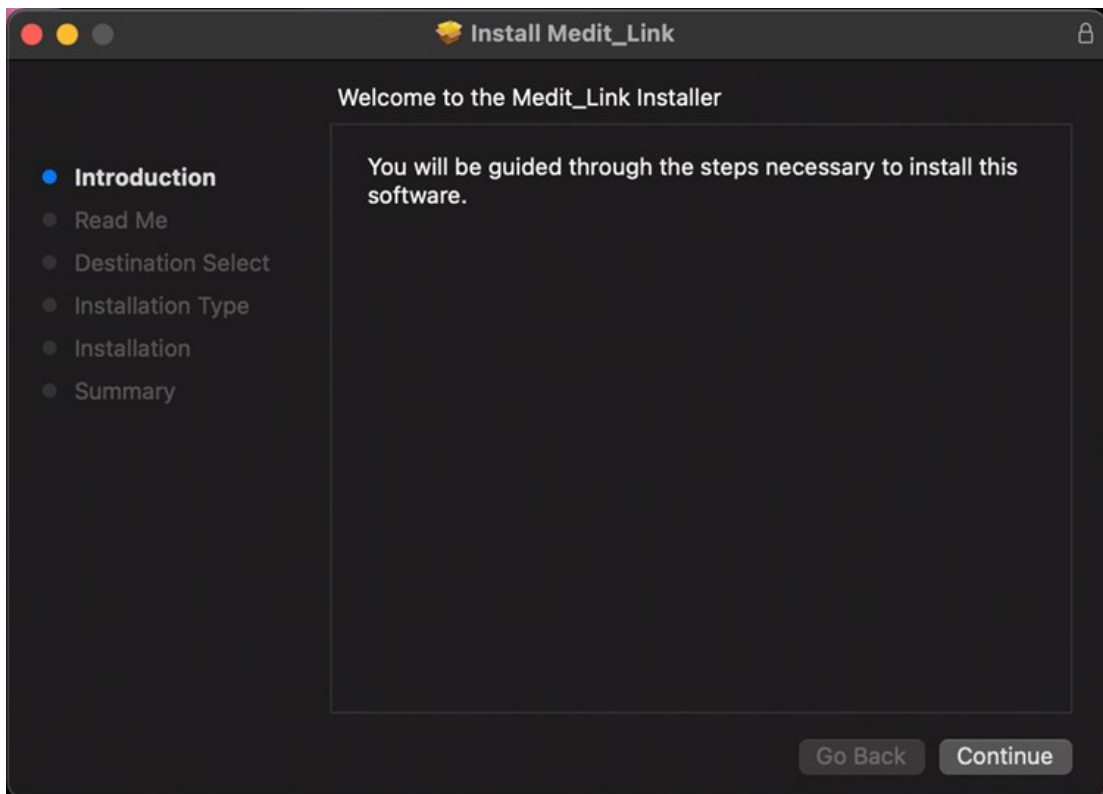


2. Citește Acordul de licență pentru utilizatorul final și fă clic pe „Continuă”.

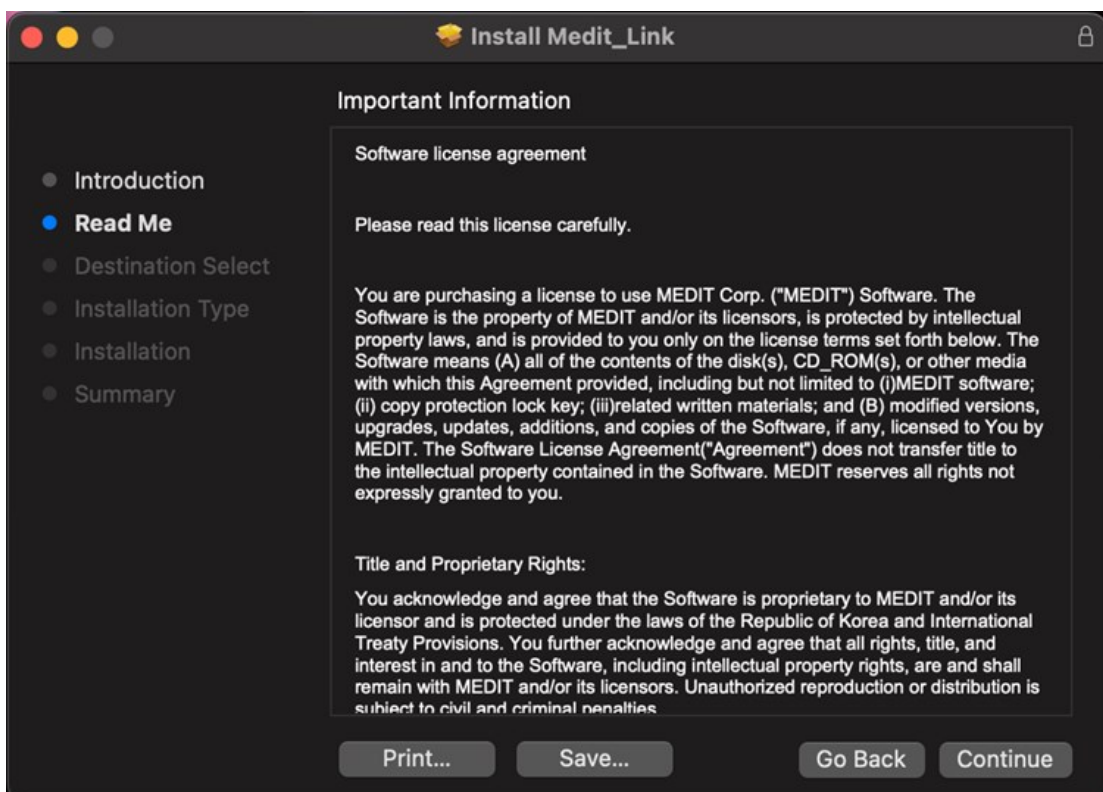

3. Selectează discul pentru a instala și fă clic pe „Continuă”.

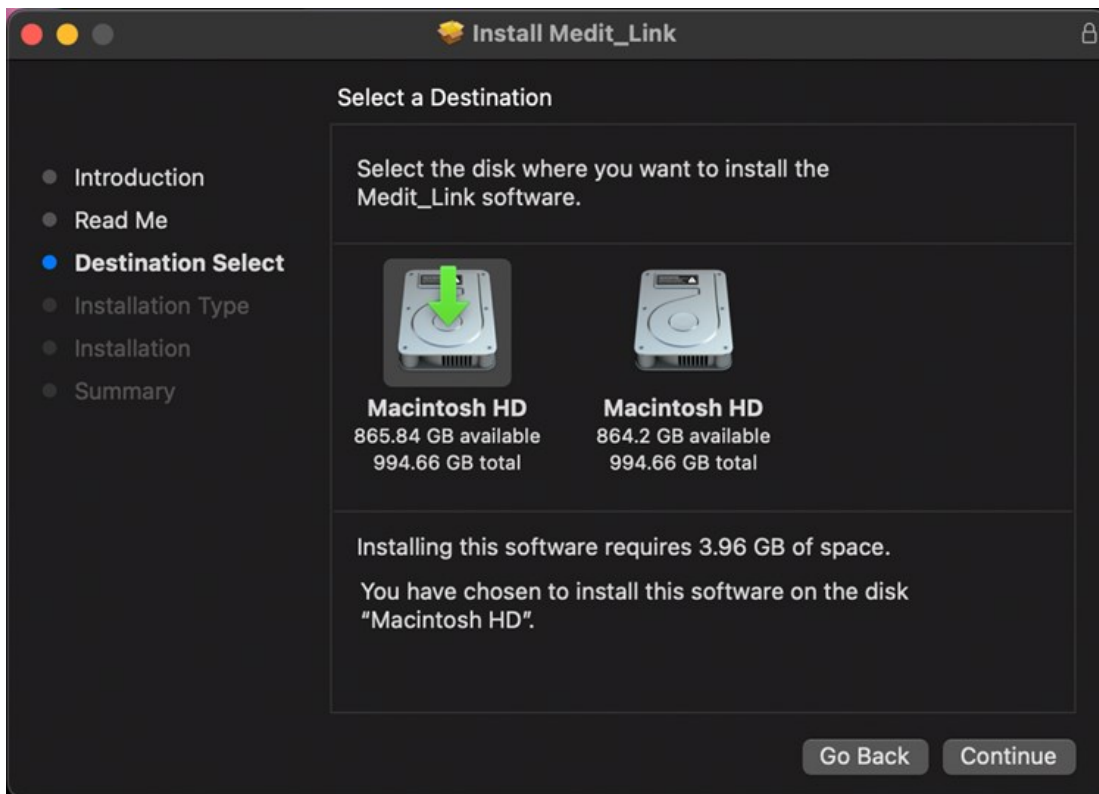


4. Clic pe „Schimbă locația de instalare...” pentru a schimba destinația de instalare.

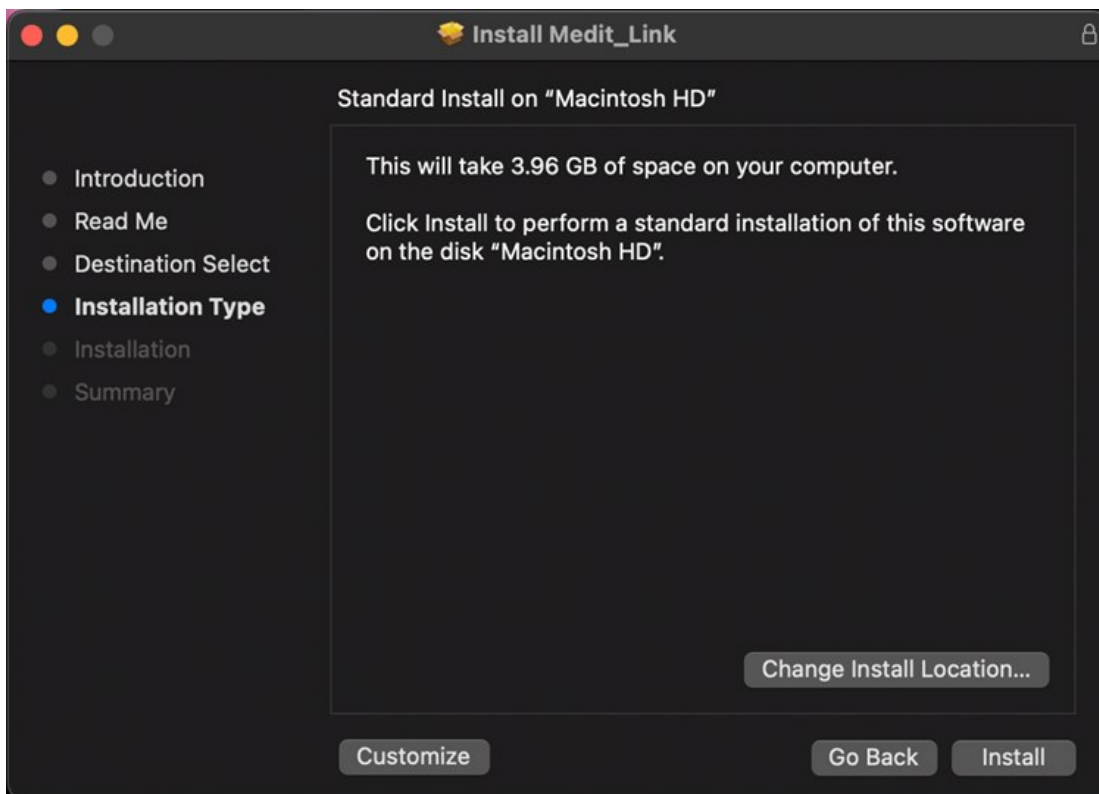


5. Clic pe „Instalează” și introdu parola Mac-ului tău pentru a permite instalarea dacă este solicitată.



6. Așteaptă până când instalarea este finalizată.

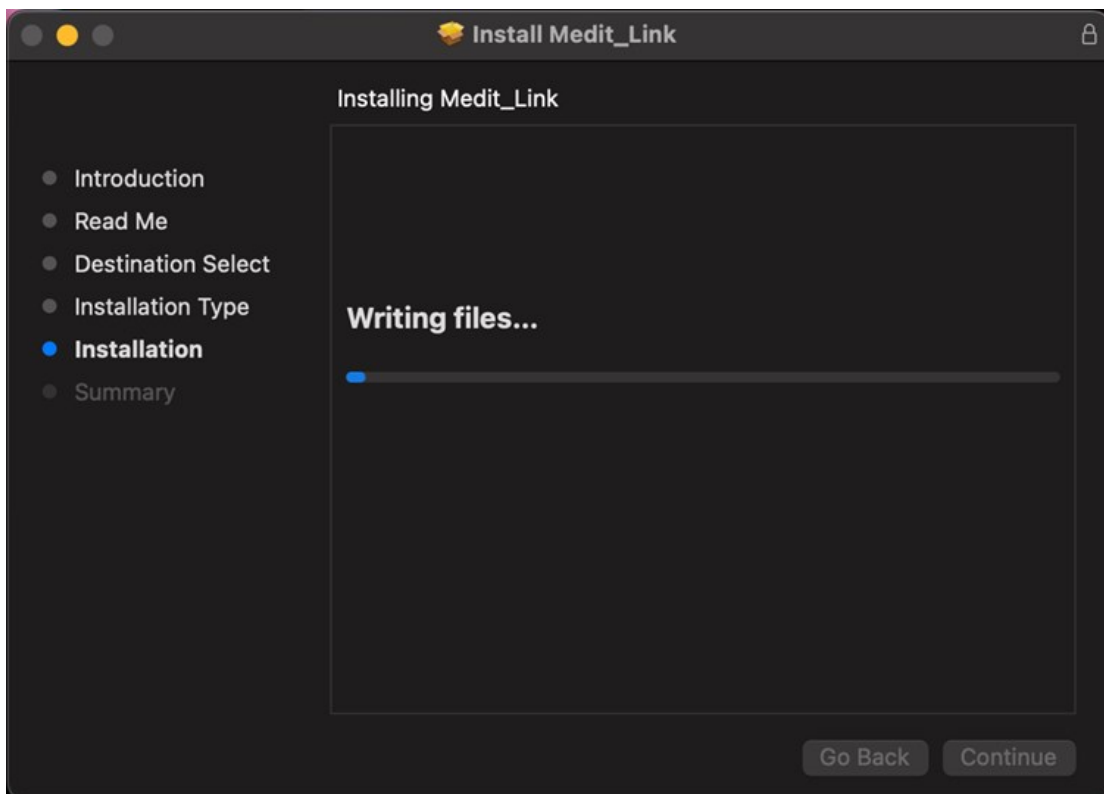


7. Clic „Închide” pentru a ieși din fereastra de instalare.

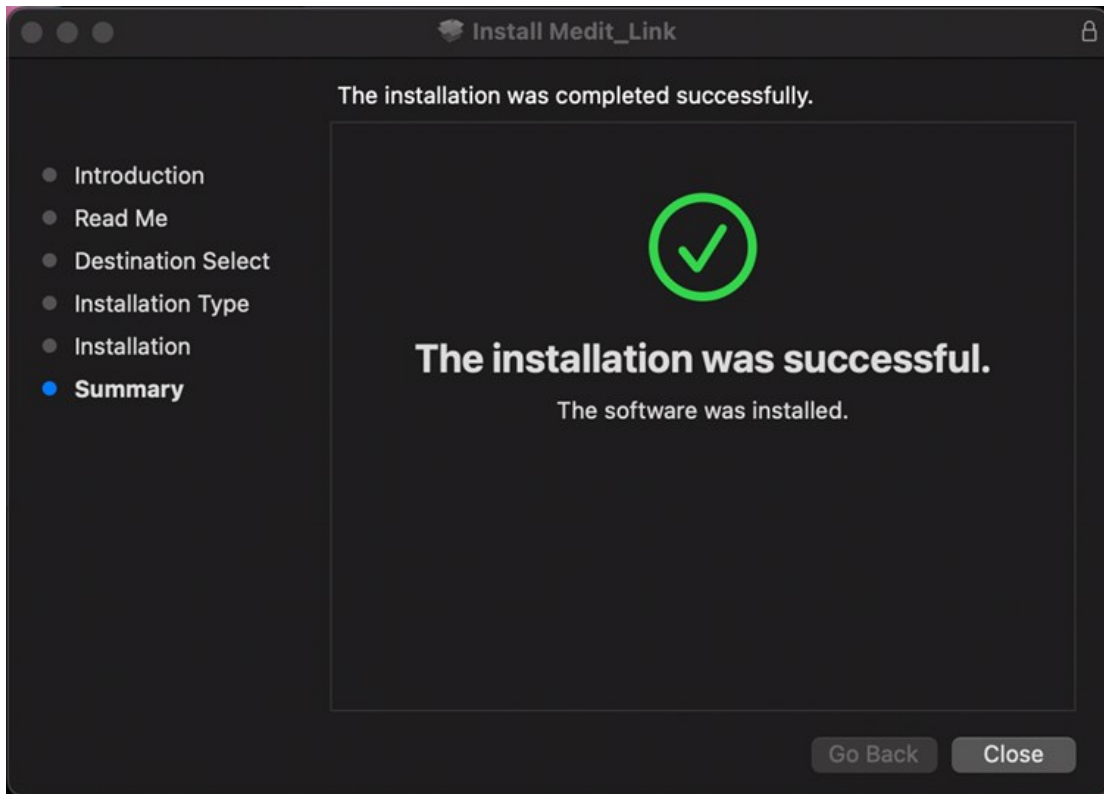

Înregistrare și conectare

Site web Medit Link

Înregistrează-te pentru serviciul Medit Link la www.meditlink.com.

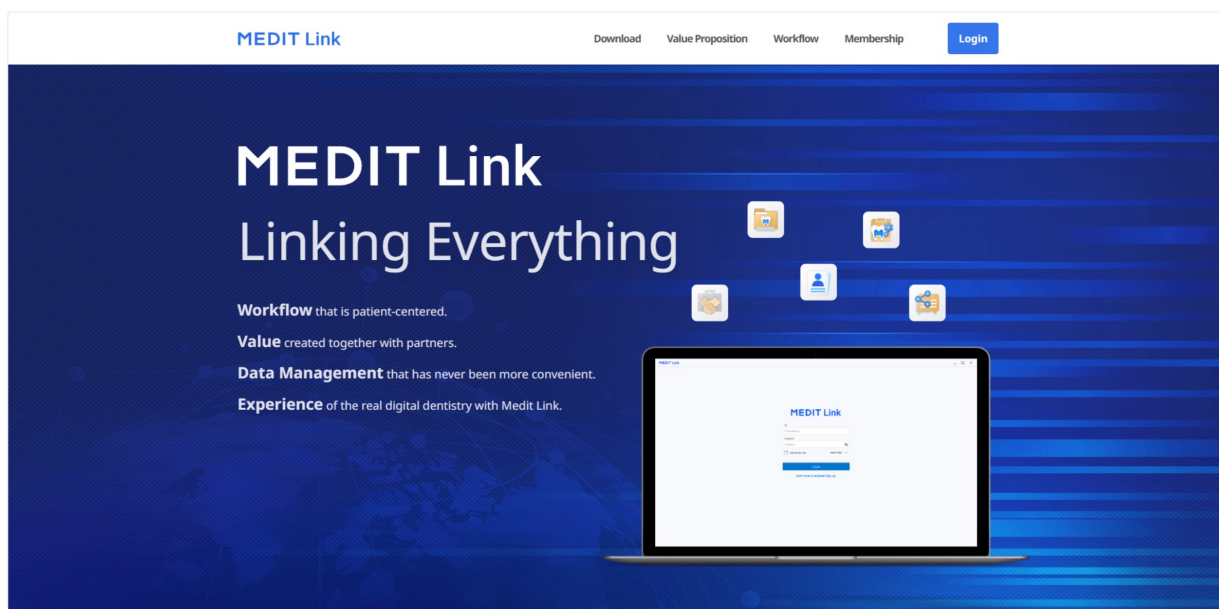

Înregistrează-te pentru Medit Link China la www.meditlink.cn.

Înregistrează-te

Pentru a utiliza serviciul Medit Link, trebuie să te înregistrezi pentru un cont. Poți utiliza funcțiile oferite de Medit Link după crearea unui cont ca clinică sau laborator.

Utilizatorii pot selecta unul dintre următoarele patru tipuri de cont pentru a se înregistra ca membru și pentru a utiliza serviciul cu caracteristici și privilegii complete sau limitate, în funcție de tipul de cont.

- Clinică - Administrator
- Clinică - Membru
- Laborator - Administrator
- Laborator - Membru

De obicei, administratorul este un reprezentant al organizației tale și va avea acces deplin la toate funcțiile și serviciile Medit Link. În schimb, contul de membru are acces limitat.

Pentru a te înscrie ca membru, urmează acești pași:

1. Faceți clic pe „Încă nu ai un cont? Înregistrează-te” pe pagina de autentificare.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. După ce ați citit descrierile furnizate, clic pe butonul „Înregistrează-te” pentru tipul de cont dorit.



Clinic



Lab

Administrator
Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register

Administrator
Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member
Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member
Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Va apărea următorul formulare de înregistrare.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country ▼

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

View

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Introdu numele clinicii sau al laboratorului și apoi, în funcție de tipul de cont dorit, efectuează următoarele acțiuni:
 - Dacă te înregistrezi în calitate de administrator, fă clic pe „Verifică disponibilitatea” pentru a vedea dacă numele introdus este disponibil.
 - Dacă te înregistrezi ca membru, fă clic pe „Căutare”. Administratorul trebuie să înregistreze deja organizația înainte de a te înscrie.
5. Completează restul formularului de înregistrare și fă clic pe „Înregistrează-te”.

Aviz

Dacă ești de acord să primești informații de marketing în timpul înregistrării, vei primi informații utile despre produsele și serviciile Medit.

6. Ți se va trimite un e-mail de verificare.
7. Pentru a finaliza procesul de înregistrare, verifică-ți adresa de e-mail cu ajutorul linkului primit.

Pagina de autentificare și de bun venit

1. Introdu adresa ta de e-mail și parola pe pagina de conectare și fă clic pe „Autentificare”.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)


Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Va apărea următoarea căsuță de dialog dacă nu ai completat informațiile afacerii tale.

Welcome, stage-test-wh!

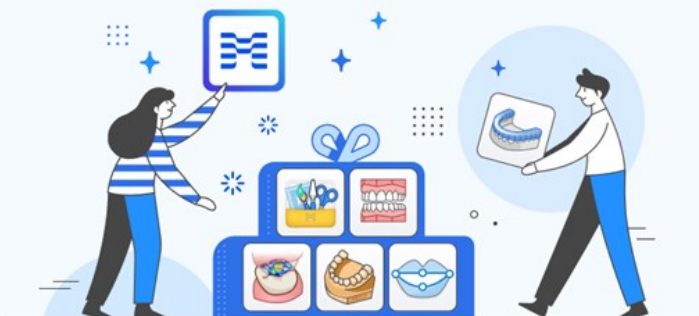

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

 **Aviz**


Pentru a utiliza serviciile Medit Link, informațiile clinicii sau laboratorului tău trebuie să fie introduse utilizând contul de administrator.

3. Clic pe butonul „Mergi la Clinica mea” sau „Mergi la Laboratorul meu” și introdu informațiile despre clinică sau laborator, inclusiv numele afacerii, imaginile de copertă/logo, serviciile pe care le oferi, adresa și numărul biroului etc.
4. Informațiile introduse pe pagina de bun venit pot fi editate oricând în filele My Info > Clinica mea sau Laboratorul meu în Medit Link Web.

Dashboard

Prezentare generală Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru toată activitatea desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

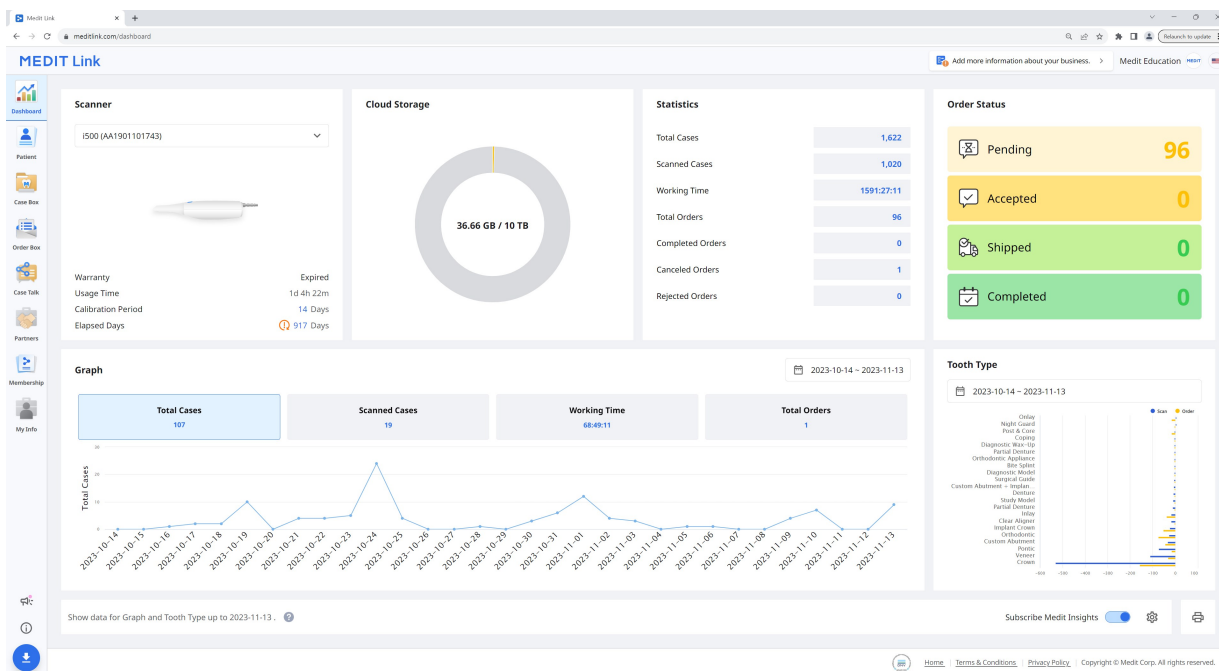

Graficele și diagramele din dashboard arată statisticile pentru toată activitatea desfășurată în Medit Link.

Scanner	Furnizează informații despre scanerile active, inclusiv garanția, intervalul de calibrare și timpul scurs de calibrare.
Spațiu de stocare Cloud	Afișează capacitatea totală cloud și cantitatea utilizată.
Statistici	Furnizarea de statistici privind cazurile în funcție de statutul postului.
Statusul comenzii	Furnizează statistici privind cazurile în funcție de starea comenzilor.
Grafic	Reprezentarea grafică a informațiilor privind locurile de muncă pe perioade.
Tip dinte	Furnizează statistici privind numărul de scanări și comenzi în funcție de informațiile privind tratamentul.


Medit Insights

Medit Insights este un serviciu de raportare care te ajută să analizezi statisticile de utilizare.



Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Medit Insights

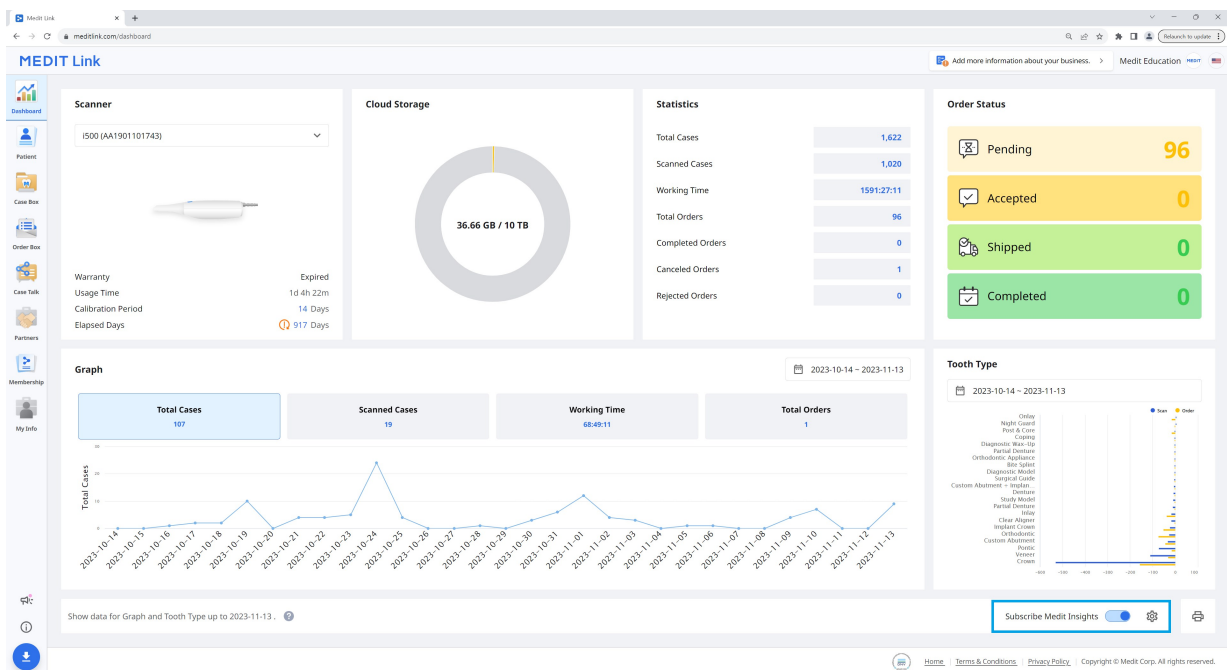

Abonează-te la Medit Insights

Poți primi un e-mail de raportare în a doua zi a fiecărei luni. Nu este necesar niciun alt proces de înscriere. Doar activează „Abonează-te la Medit Insights”.

Dacă nu utilizezi adresa de e-mail pe care ai folosit-o pentru contul Medit Link, poți seta o altă adresă de e-mail pentru a primi Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.


The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

21

În a doua zi a fiecărei luni, vei primi un e-mail cu statistici, așa cum se arată mai jos.

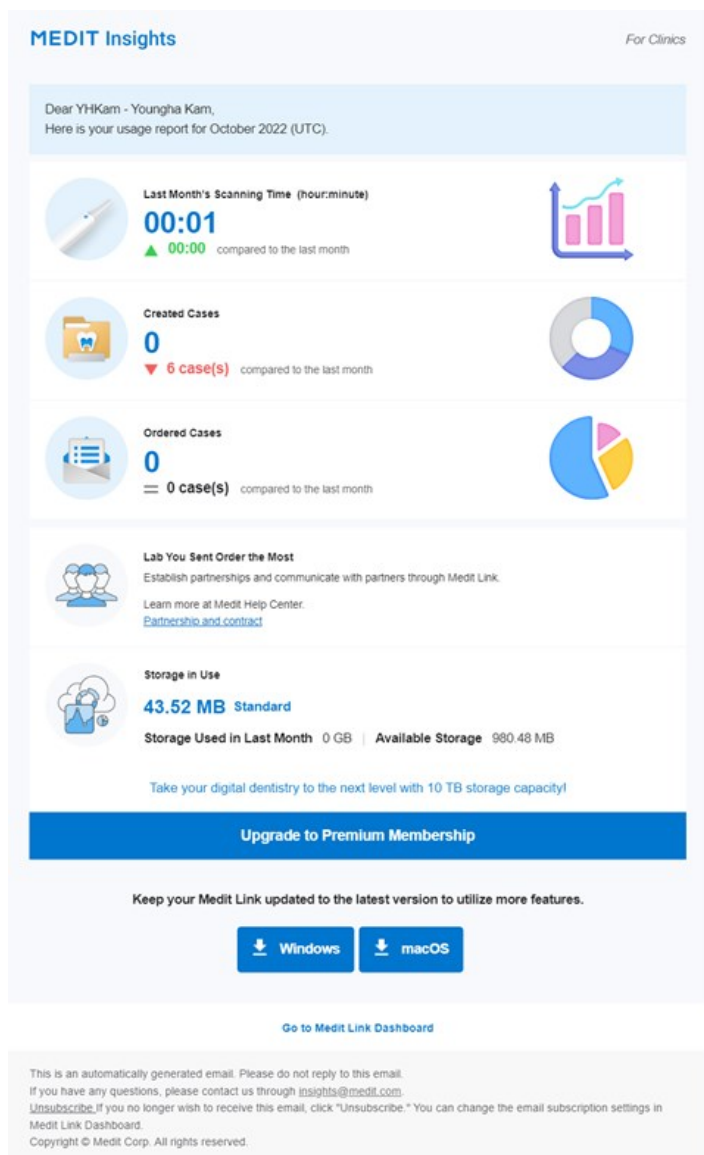

Banner	Medit oferă sfaturi și informații utile aici. * Dacă nu vrei să vezi bannerul, debifează căsuța de selectare a Acordului de marketing și promovare din Informațiile mele > Contul meu.
Informații statistice	Sunt afișate informații statistice, cum ar fi timpul de scanare, cazurile create, laboratorul cel mai comandat etc.
Descarcă Medit Link	Butonul oferă linkul de descărcare a Medit Link.
Dashboard	Toate informațiile statistice se bazează pe informațiile din Dashboard. Poți vedea mai multe detalii în Dashboard.


Dezabonare Medit Insights

Dezactivează „Abonare Medit Insights” în Dashboard sau clic „Dezabonare” în e-mailul primit.

Patient

Poți gestiona cazurile pe baza numelui și a ID-ului pacientului.


Toți pacienții înregistrați prin intermediul aplicației Medit Link sunt afișați într-o listă, ceea ce facilitează gestionarea pacienților și a cazurilor acestora.

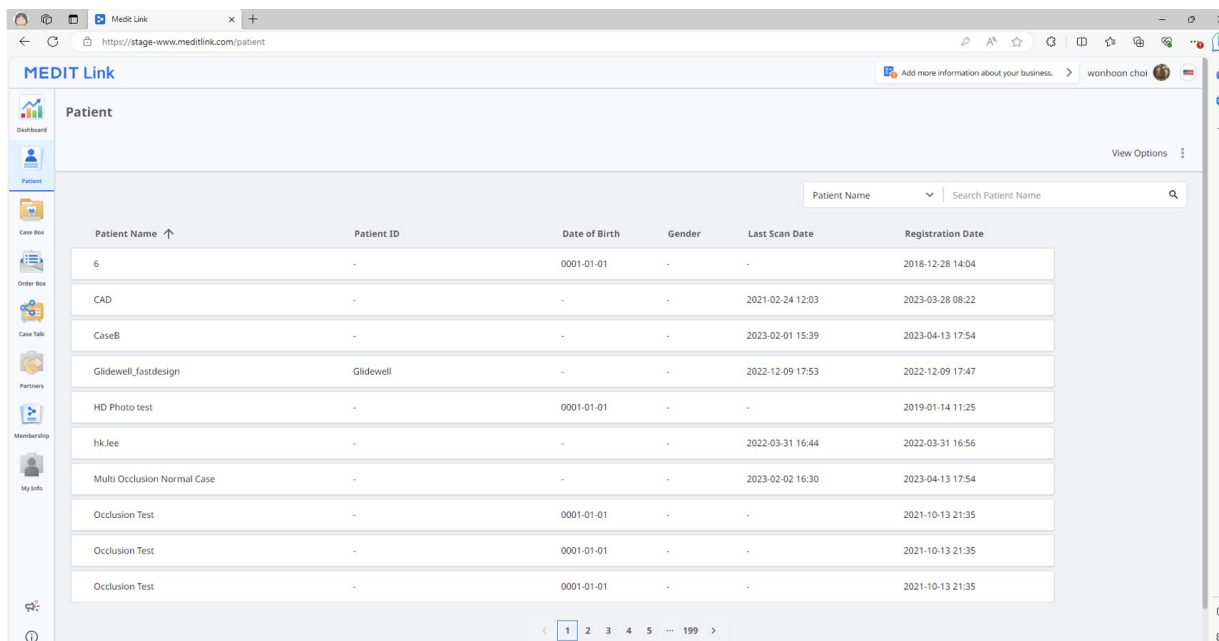

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Caută pacient


1. Selectează criteriile de căutare între Numele pacientului sau ID-ul pacientului din meniul derulant din dreapta sus a listei de pacienți.

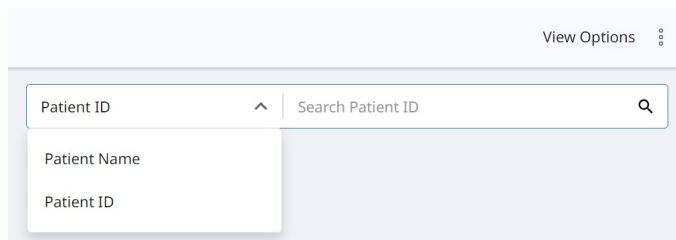

2. Introdu numele pacientului sau ID-ul pacientului pentru a căuta în funcție de criteriile de căutare selectate.
3. În listă sunt afișați numai pacienții cu numele sau ID-ul de pacient introdus.

Case Box/Work Box


Case Box (Clinică) sau Work Box (Laborator) afișează toate cazurile pe care utilizatorul le-a creat în aplicația Medit Link. Poți vizualiza fișierele prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat.

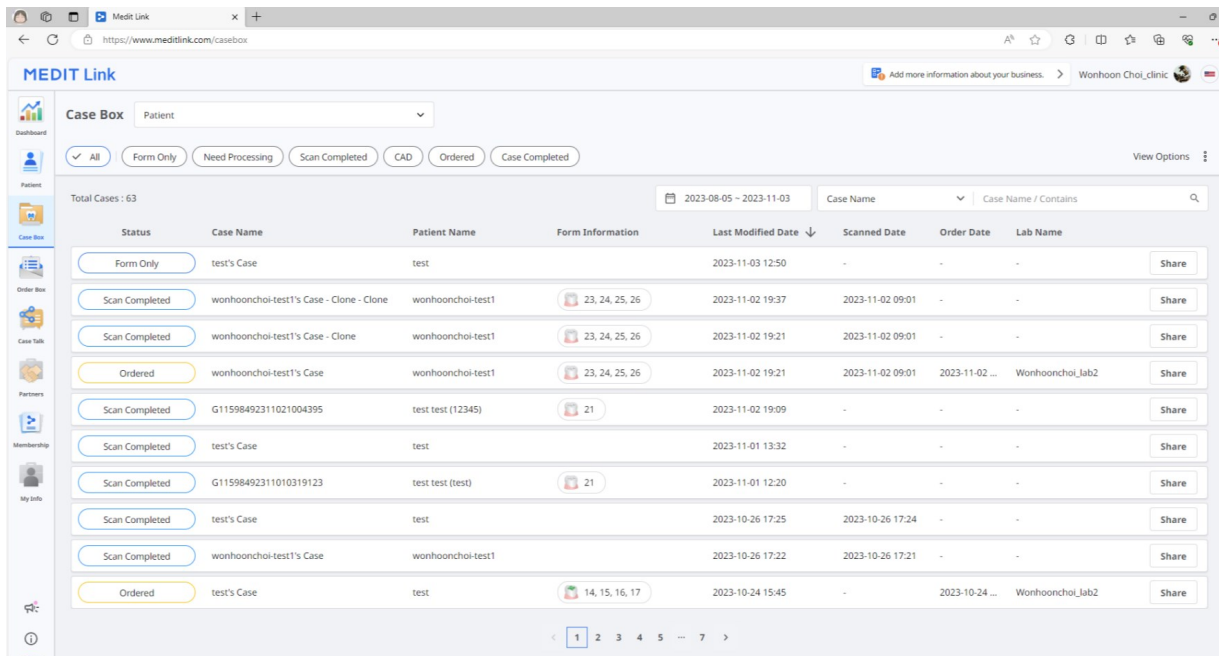


Filtrare caz

Filtrează după pacient

Poți filtra cazurile după pacienți. Este util când găsești cazuri pentru anumiți pacienți.

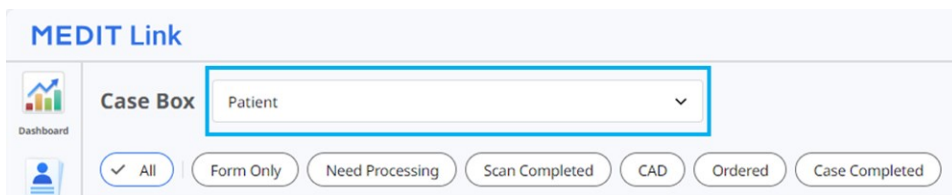

1. Introdu numele pacientului în câmpul de căutare.

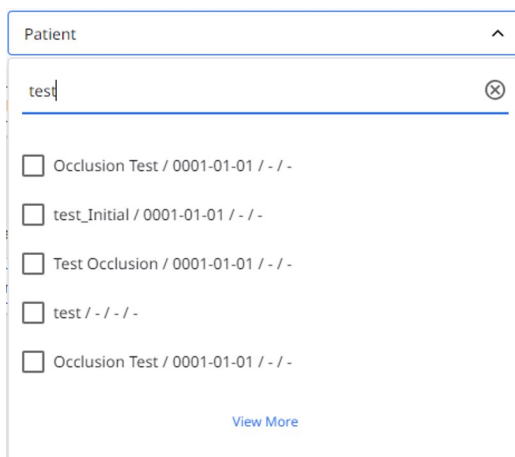

2. Selectează un pacient din lista de rezultate de căutare.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați, ceea ce facilitează găsirea cazurilor cu care dorești să lucrezi.

MEDIT Link
Add more information about your business.
Wonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

☒ All
☐ Form Only
☐ Need Processing
☐ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

Total Cases: 63
2023-08-05 ~ 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7 >

Filtreză după statut

Poți filtra cazurile în funcție de statutul acestora.

All
☒ Form Only
☐ Need Processing
☒ Scan Completed
☐ CAD
☐ Ordered
☐ Case Completed

- Utilizatorul poate face clic pe starea pe care dorește să o vizualizeze. Browserul va afișa numai cazurile cu starea aleasă.
- Utilizatorul poate selecta mai multe statusuri simultan.

Următorul tip de statut este furnizat în funcție de tipul de cont:

Case Box (Clinică)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laborator)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrare după durată

Poți filtra și afișa cazurile care au fost modificate ultima dată în perioada stabilită.

1. Clic pe filtrul de durată.

2. Selectează intervalul.

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează ultimele cazuri modificate astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată cu data de ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 90 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 90 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile din această lună.
- Luna trecută: Afișează cazurile din luna precedentă.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.


Filtrare după căutare

Poți utiliza capacitățile de căutare pentru a căuta informațiile necesare cu ușurință și rapiditate.

Opțiuni de căutare bazate pe contul clinicii/laboratorului:

Case Box (Clinică)	Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator
Work Box (Laborator)	Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă

Detalii caz

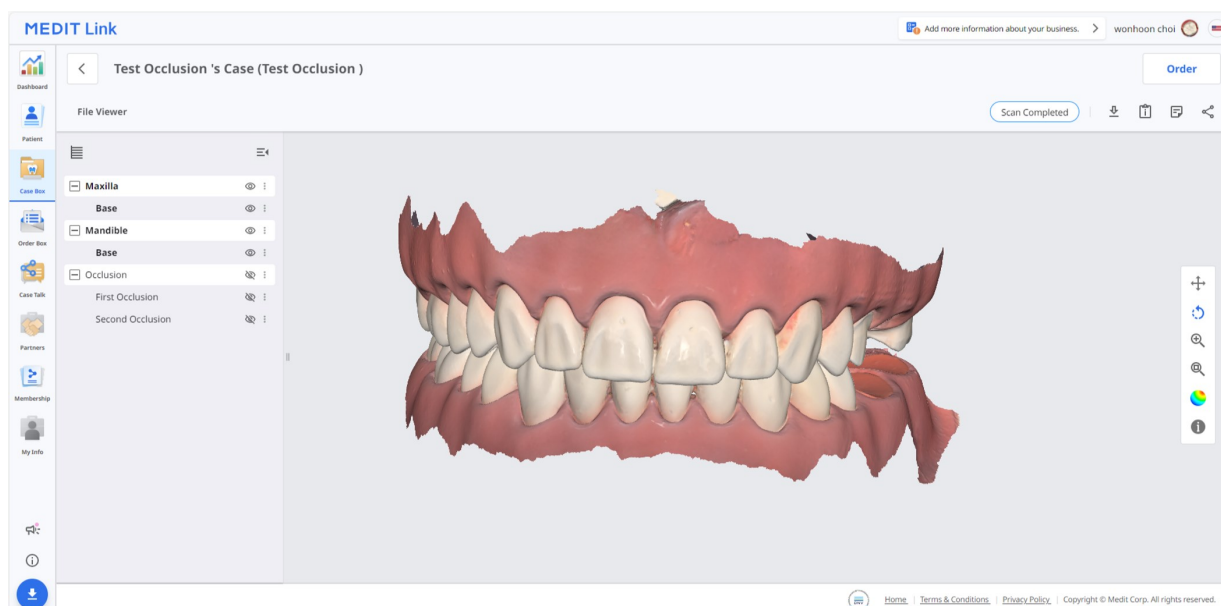

Următoarele instrumente de gestionare a cazurilor sunt furnizate în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la Case Box/Order Box	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Descarcă	Descarcă fișierele din caz pe calculatorul local.
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo & etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser, cum ar fi Chrome, Firefox sau Safari, fără a instala programe suplimentare.

Order Box/In Box

Order Box (Clinică) sau In Box (Laborator) afișează cazuri comandate pe aplicația MEDIT Link.

Detalii comandă

- | | |
|---|---|
| 1 | Afișează numele cazului și numele pacientului. |
| 2 | Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție). |
| 3 | Afișează filele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier |
| 4 | Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc. |
| 5 | Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete. |
| 6 | Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării. |


File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate ale comenzii, cum ar fi ID-ul comenzii, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, memo și etichete.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumite persoane pe care le specificezi, cu orice persoană care are un link partajat sau cu membrii înregistrați în Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin „Case Talk” în Medit Link App și Medit Link Web.

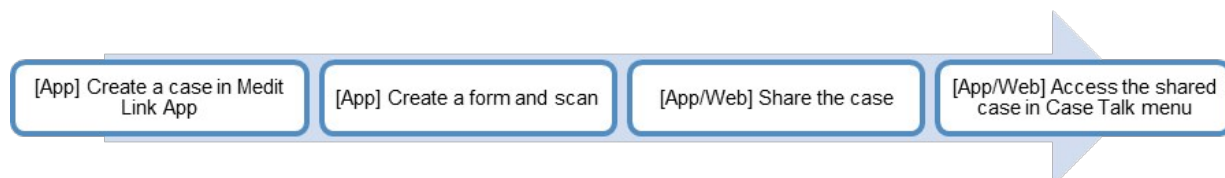


Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.

Crearea unui Case Talk

Poți crea o legătură partajată către un caz care a fost creat în Case Box/Work Box.

1. Găsește un caz pe care dorești să îl partajezi și fă clic pe butonul „Partajează” din dreapta.

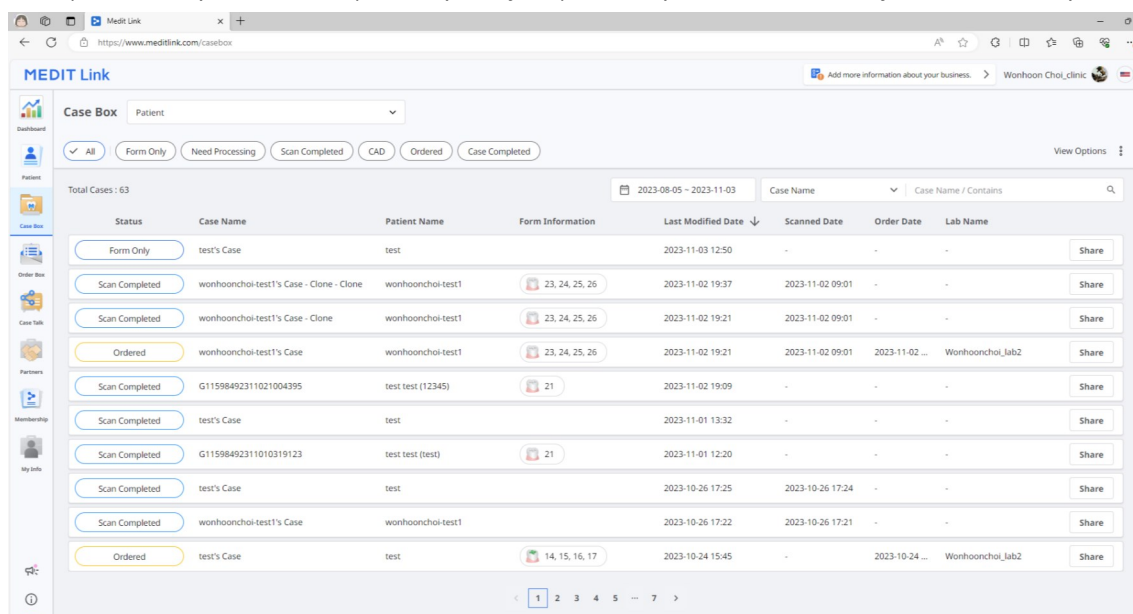


2. Selectează fișierele pe care dorești să le partajezi.

Partajează cu	• Partajează cu oricine Creează o legătură partajată. Poți partaja fișierele cu oricine. • Partajare cu anumite persoane Creează și trimite un link partajat către anumite persoane.
Partajează prin	Dacă selectezi „Partajează cu anumite persoane”, poți partaja linkul cu anumite persoane în diferite moduri. • Adresă de e-mail • SMS • Parteneri
Data de expirare	Setează data de expirare a linkului. După ce link-ul expiră, persoanele cu care l-ai partajat nu vor mai avea acces la fișiere. Poți prelungi perioada de expirare până la 90 de zile începând de astăzi.
Cod PIN	Setează un cod de acces din 6 cifre pentru a asigura securitatea datelor.
Partajează numele pacientului	Dacă bifezi această opțiune, toate persoanele care au acces la legătură vor vedea numele pacientului.
Acordare permisiune de descărcare	Dacă bifezi această opțiune, toți utilizatorii cu linkul pot descărca fișierele.
Permite comentarii	• Dacă bifezi această opțiune vei putea să comunicii prin intermediul link-ului partajat. • Dacă debifezi această opțiune, destinatarul poate doar să vadă comentariile tale, dar nu va putea să le adauge pe ale sale.
Comentariu	Poți lăsa un mesaj în secțiunea de comentarii.

Detalii Case Talk

Poți vedea fișierele în cazul partajat. Următoarele funcții sunt disponibile pe pagina de detalii Case Talk.

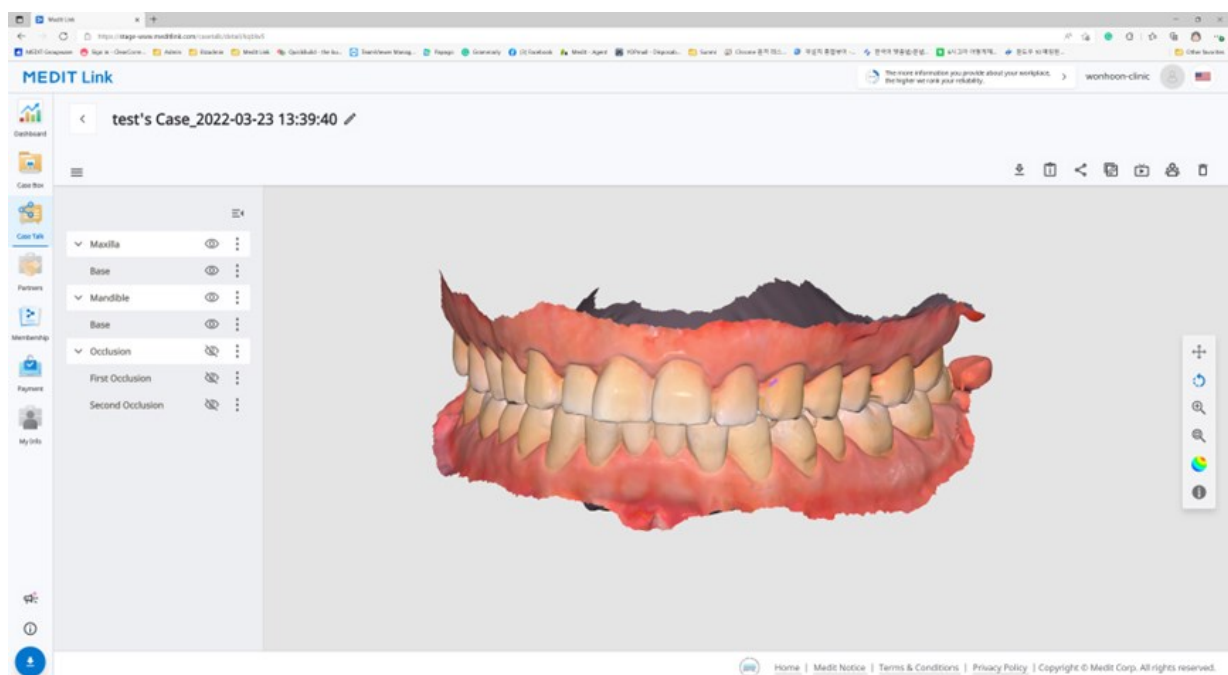

	Descarcă	Descărcați toate fișierele din dosar pe calculatorul local.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Copiază link	Copiază linkul partajat în clipboard. Linkul copiat afișează fișierele partajate în browserul tău web.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care accesează linkul partajat.
	Șterge	Șterge linkul partajat. Linkul partajat șters nu mai este accesibil.

Aviz


Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Web Viewer

Poți vizualiza datele partajate prin Case Talk într-un browser web.

Este posibil să se comunice cu persoanele care au acces la legătură folosind adnotări și comentarii.

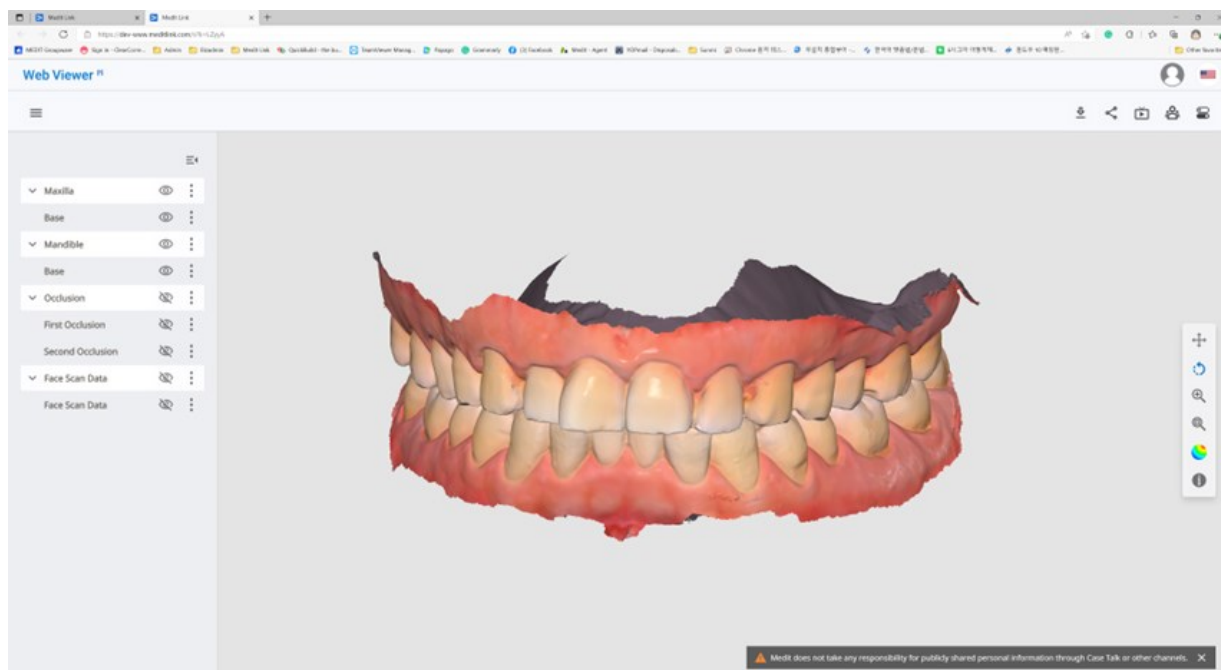

	Descarcă	Descarcă toate fișierele din acest caz în calculator.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.

	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care sunt conectați la legătura partajată.
	Etichetare dinte	Schimbă sistemul de etichetare a dinților.


Aviz

Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Adnotare

Poți adăuga adnotări la o locație specificată pe modelul 3D. Oricine are acces la acest link poate vizualiza adnotările pe care le adaugi.

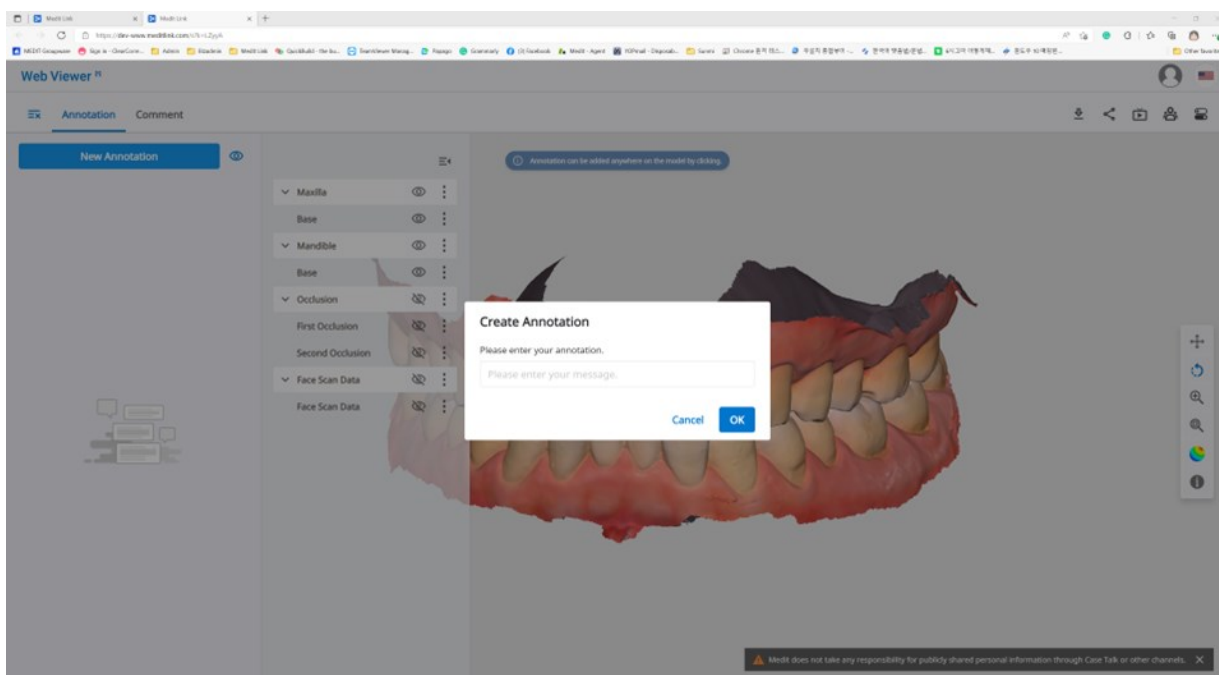


Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Adnotare

1. Găsește pictograma de meniu din colțul din stânga sus și selectează fila „Adnotare”. Utilizează butonul „Adnotare nouă” pentru a adăuga o adnotare oriunde pe date cu un singur clic.
2. Introduci mesajul, apoi clic pe „OK” pentru a-l salva.

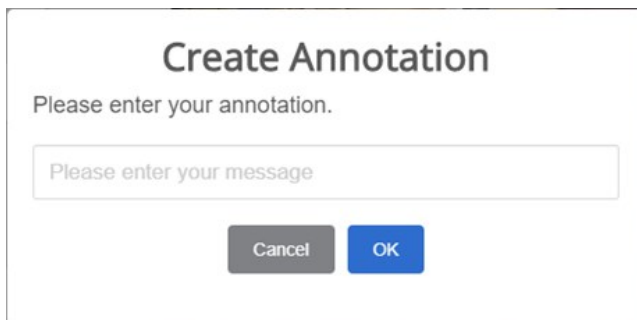


Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

- Poți folosi adnotările ca un simplu canal de comunicare.
Apasă pe adnotarea creată pentru a introduce un răspuns și apasă „Trimite”.

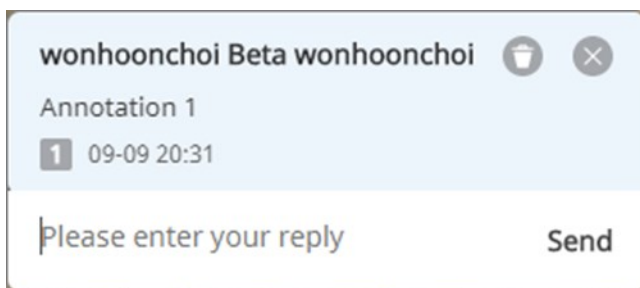

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Comentarii

Poți comunica cu utilizatorii care au acces la link prin intermediul filei „Comentariu” din meniul Web Viewer.



Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Comentariu

Partajarea ecranului în timp real

Poți partaja ecranul în timp real.



Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Live

- Clic pe „Live” pentru a partaja ecranul Web Viewer cu utilizatorii conectați.



Web Viewer Live

Web Viewer Live allows you to share the screen in real-time with all the users currently connected. Try Web Viewer Live now.

Cancel OK


- Clic pe „OK” pentru a începe partajarea ecranului.
- Celelalte persoane care au accesat linkul trebuie să accepte partajarea ecranului.
- Ecranul utilizatorului care a inițiat partajarea ecranului este afișat în sincronizare cu cel al

persoanei care a primit cererea.

Arbore de date



Toate datele sunt grupate și afișate în funcție de atributele din arborele de date. Poți afișa sau ascunde datele, ajusta opacitatea și așa mai departe.

Controale arbore de date

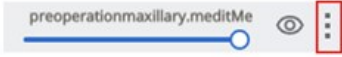Afișează / Ascunde	Clic pe pictograma „ochi” pentru a afișa sau ascunde datele din vizualizare. Controlează vizibilitatea datelor ca grup sau ca fișier individual.
Opacitate	Treci mouse-ul peste un element vizibil pentru a vedea bara glisantă de opacitate. Reglează bara glisantă pentru a modifica transparența datelor tale. 
Meniu extins	Meniul extins se află în partea dreaptă a fiecărui element al Arborelui de date. Include următoarele opțiuni:  • Arată doar asta: Ascunde toate celelalte date, cu excepția celor curente. • Ascunde: Ascunde datele actuale.

Controalele modelului 3D

	Panoramă	Mută modelul.
	Rotește	Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
		Afișează datele în culori reale de textură.

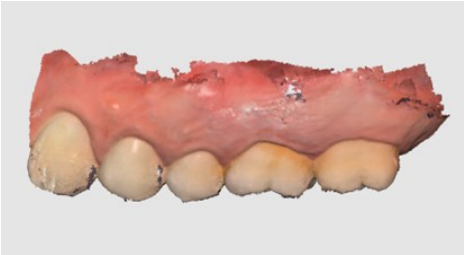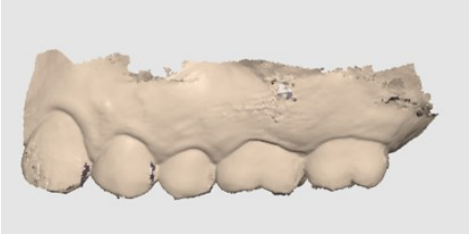	Mod de afișare a modelului	Textură pornită	
		Textură oprită	Afișează datele într-o singură culoare. 

Partners

Poți să cauți parteneri potențiali pentru a solicita un parteneriat și să vizualizezi lista partenerilor actuali.




Serviciile care utilizează Google Maps nu sunt disponibile pe Medit Link China.

Caută parteneri


Poți căuta utilizatorii Medit Link pe baza numelui și/sau a adresei afacerii lor.

În rezultatele căutării, poți trimite o cerere de parteneriat unei întreprinderi cu care dorești să colaborezi.

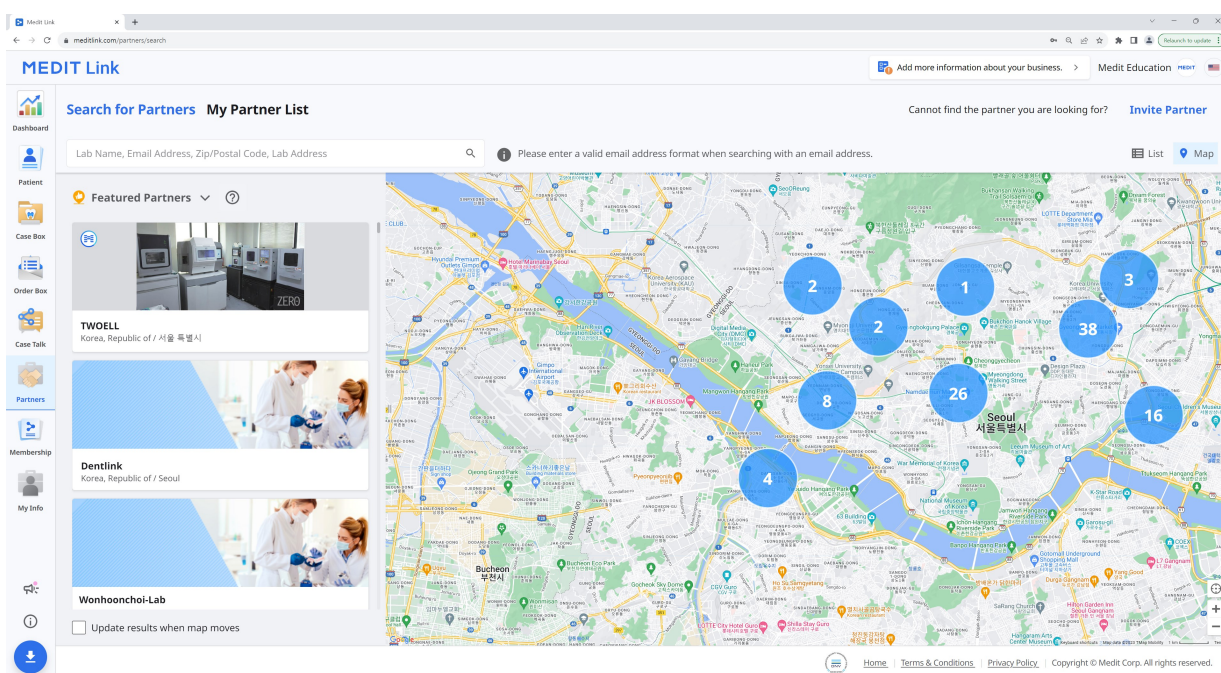

Lista mea de parteneri

Poți revizui parteneriatele tale actuale cu toate întreprinderile partenere existente în Lista mea de parteneri.

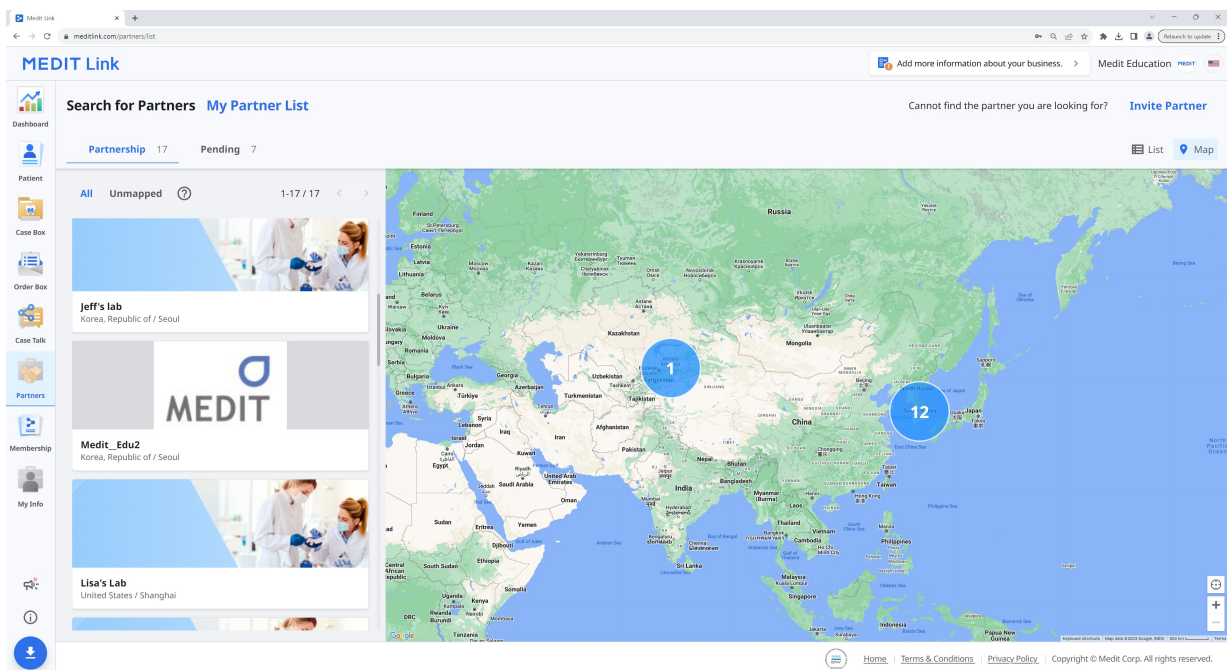

Invitarea partenerilor

Dacă ai o clinică sau un laborator cu care dorești să lucrezi, îi poți invita să se alăture Medit Link. Parteneriatul va fi format automat odată ce aceștia acceptă invitația.

1. Clic pe „Invită partener” în partea din stânga sus a ecranului.
2. Introdu adresa de e-mail a unei întreprinderi cu care dorești să lucrezi și trimite-i o invitație cu o cerere de parteneriat.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Odată ce organizația invitată acceptă invitația și se înscrie la Medit Link, parteneriatul va fi stabilit în mod automat.

Membership

Politica de afiliere a Medit Link are ca scop stabilirea unui mediu digital mai extins, extinzându-se treptat pentru a oferi diverse servicii bazate pe platforma cloud.

Ne propunem să oferim clienților noștri o experiență mai consistentă și mai personalizată cu noua noastră politică de abonare.

Sunt disponibile două planuri de abonament:

Standard

- Plan standard gratuit pentru toți utilizatorii înregistrați
- 1 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii noi

Premium

- Plan plătit
- 10 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii cu multe cazuri și diverse date
- O lună de probă gratuită

	Standard	Premium
Spațiu de stocare Cloud	1 GB	10 TB
Taxă lunară	Gratuit	\$0.99/lună

* Cloud Storage nu calculează spațiul ocupat de datele neprelucrate.



Planurile de abonament vor fi disponibile pe Medit Link China. Poți obține planul Premium gratuit până la lansarea oficială a funcției.

Abonament

Planul meu

În secțiunea din partea stângă, poți vedea planul tău de abonament actual. De asemenea, îți poți schimba statutul de abonament în orice moment.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Subscribe

Spațiu de stocare Cloud

În secțiunea din partea dreaptă, poți gestiona stocarea în cloud.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07 All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago



☐ Total Selected 0.00 KB Delete

☐ Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	

Setează perioada

Setează perioada specifică pentru a șterge datele create în acest interval de timp.

- Toate: Vezi toate fișierele.
- Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare.
- Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună.
- Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni.
- Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.


Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele brute de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului.
Rezultat & Atașament	Fișierele rezultate și fișierele atașate ocupă spațiu în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu.

Abonează-te

Dacă în prezent ești pe planul Standard sau pe planul Premium cu un cod de răscumpărare, te poți abona la abonamentul Premium.

Plata se realizează prin serviciul Stripe (www.stripe.com).

1. Clic pe butonul „Abonare”.

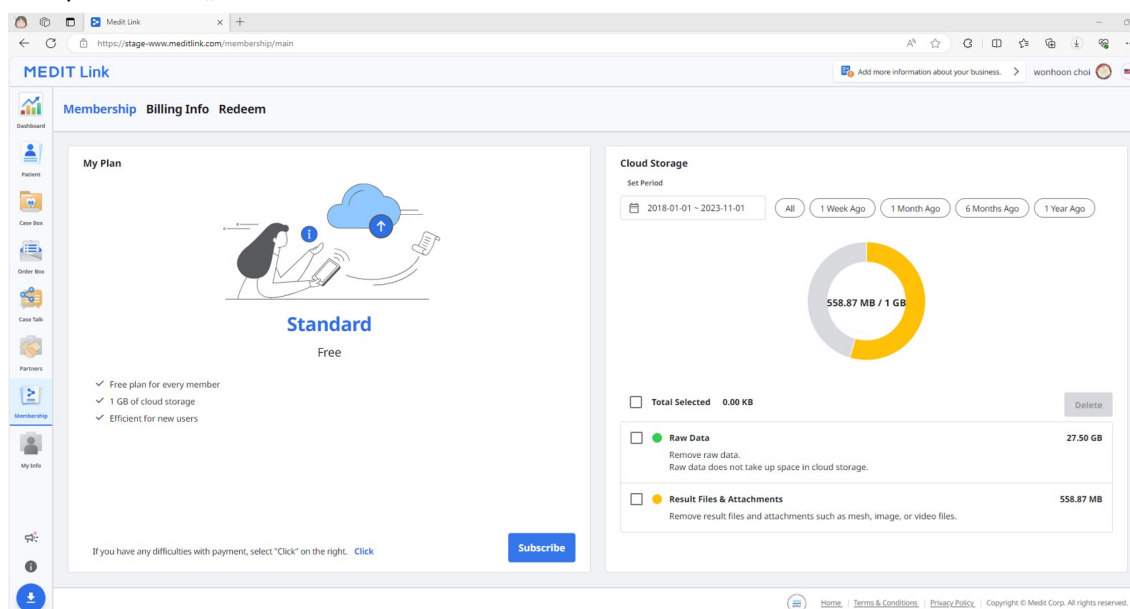

2. Verifică descrierea planului Premium și fă din nou clic pe „Abonare”.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. Verifică prețul și condițiile și introdu informațiile necesare pentru plată. Apoi, clic pe „Abonare”.

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Plata poate dura câteva secunde. Când ai terminat, vei vedea un mesaj de confirmare.

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close


Dezabonare

Te poți dezabona de la abonament în orice moment. După ce te-ai dezabonat, poți folosi în continuare abonamentul Premium pentru zilele rămase din luna plătită. Planul tău va fi schimbat la Standard din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 1 GB. În cazul în care capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi copiate de rezervă, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

1. Clic „Dezabonare”.

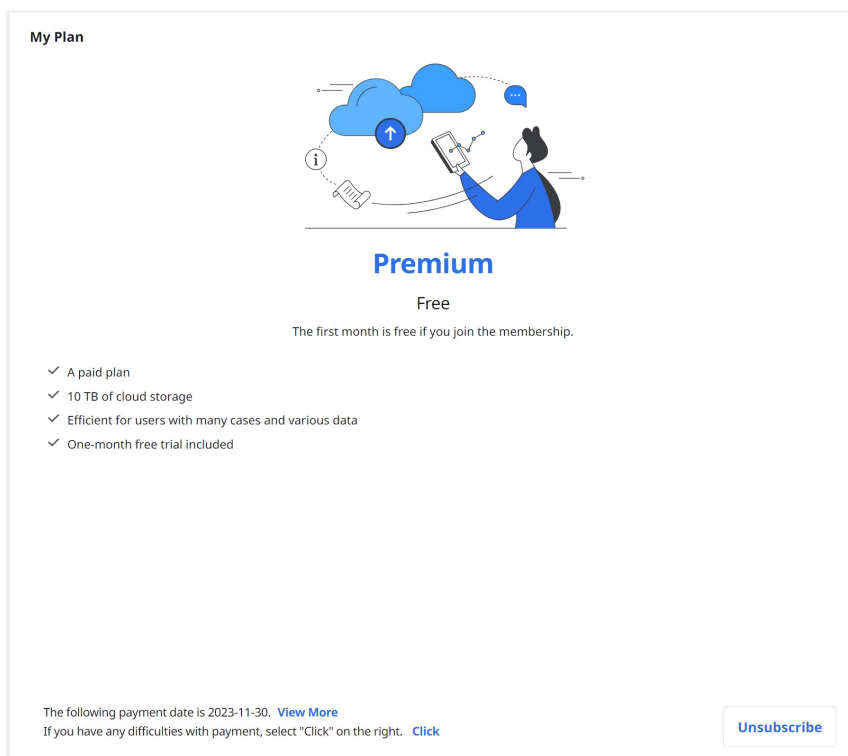

2. Clic „Anulează abonarea”.

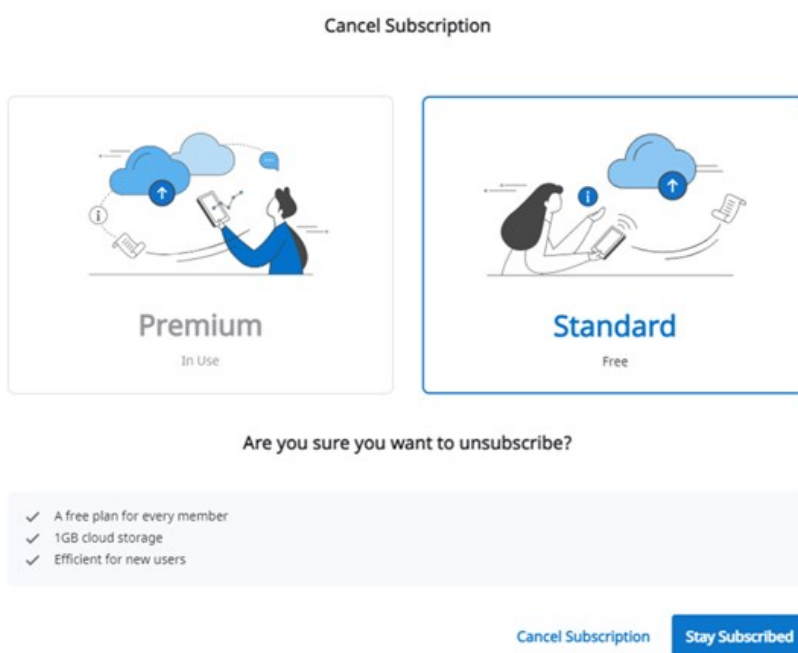

3. Pentru a confirma că nu vrei să te mai abonezi, fă clic din nou pe „Anulare abonament” în noua fereastră pop-up.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Abonamentul tău a fost anulat.
5. Planul tău va fi schimbat la Standard din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 1 GB. În cazul în care capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi copiate de rezervă, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Informații facturare

Poți verifica istoricul plăților pentru planurile de abonament, inclusiv o factură pentru fiecare plată. De asemenea, poți adăuga sau modifica metoda de plată, care va fi aplicată începând cu următoarea plată programată.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method


If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Cum să adaugi o metodă de plată

1. Clic pe „Editează metodă de plată”.

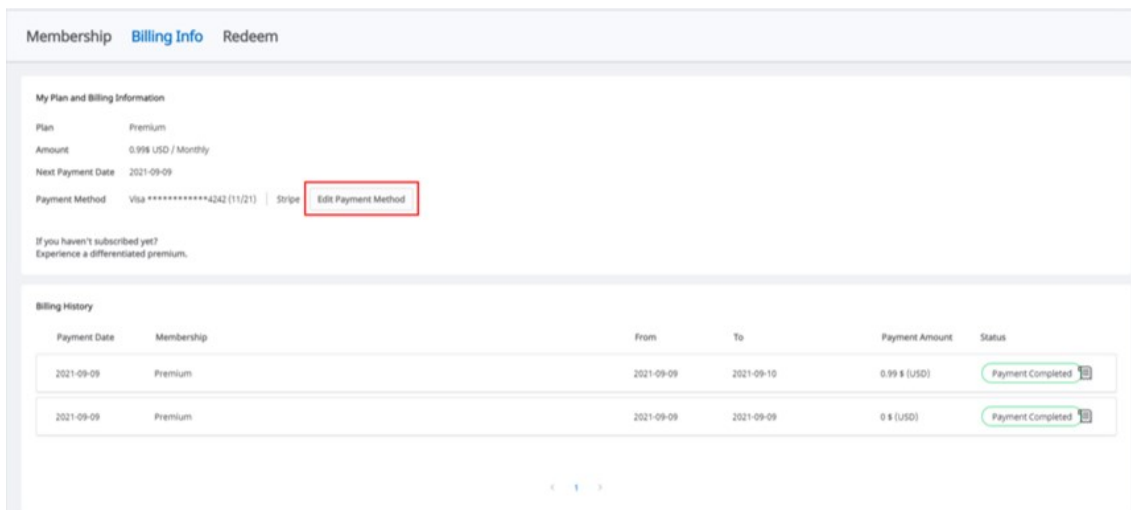

2. Clic pe „Aduă metodă de plată”.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Introdu informațiile necesare și clic pe „Aduă”.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Metoda de plată nou adăugată va fi setată ca metodă implicită și va fi utilizată de la următoarea dată de plată.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Cum să schimbi o metodă de plată

1. Clic pe pictograma de meniu extins de lângă metoda de plată pe care vrei să o schimbi în fereastra de dialog privind facturarea.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

Visa **** 5556 Default Expires 11/2021 ✕

Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Clic pe „Stabilește ca implicit” pentru a seta cardul selectat ca metodă de plată implicită.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Răscumpără

Înregistrează codul de răscumpărare furnizat ca parte a promoției. Poți folosi abonamentul Premium împreună cu codul de răscumpărare.

Înregistrează codul răscumpărării

1. Introdu codul de răscumpărare și clic „Înregistrează-te”.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status	
30 Wonhoon-TestRedeem		Medit Link	2021-10-13	2021-10-13	2021-11-12	Used	Remove

1

Home Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Citește anunțul și alege „Înregistrare” sau „Aplică” în fereastra de dialog care apare.
 - Înregistrează-te: Înregistrează-te pentru a răscumpăra codul. Poți activa și utiliza codul de răscumpărare mai târziu, după înregistrare.
 - Aplică: Înregistrează și activează codul de răscumpărare. Reducerea promoțională se aplică imediat.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Activează codul de răscumpărare

Poți înregistra mai multe coduri de răscumpărare, dar trebuie să îl activezi pe cel pe care dorești să îl folosești.

1. Clic pe butonul „Activează” de lângă codul pe care dorești să-l utilizezi.
 - Dacă nu există niciun cod cu statutul „Activated” cel pe care îl alegi va fi activat imediat.
 - În cazul în care există un cod deja activat, codul nou selectat trece la starea „Waiting”. Când codul de răscumpărare activat în prezent expiră, noul cod de răscumpărare aflat în starea „Waiting” va fi activat automat.

Aviz

Doar un singur cod de răscumpărare poate fi activat și doar unul singur poate fi în statutul „Waiting”.

My Info

Contul meu

Poți revizui și modifica informațiile pe care le-ai furnizat în timpul înregistrării și poți verifica statutul de membru.

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name

wonhoon choi

Language

한국어 (대한민국)

Country

Korea, Republic of

Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

Subscription Information

Subscribe

Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link


My AccountMy ClinicMy Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

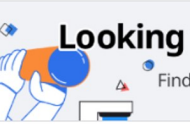

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'



1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Poți verifica informațiile despre dispozitivul conectat pentru contul respectiv.

50

Alt meniu

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit informații

Poți obține diverse informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale ale Medit, cum ar fi Medit Academy, Medit Academy YouTube și Medit Help Center.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Descarcă Medit Link App

Poți descărca cea mai recentă versiune a programului de instalare de pe internet. Acest meniu este util atunci când pierzi programul de instalare furnizat în pachetul produsului sau când ai un program de instalare depășit.



Medit Link se actualizează automat atunci când ai o conexiune la internet.

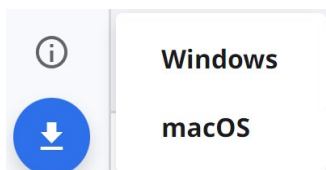

Prezentare generală

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Bară de titlu	Consultă Medit Link App > Bara de titlu pentru informații detaliate.
2	Meniu	Consultă Medit Link App > Meniu pentru informații detaliate.
3	Instrumente și funcții	Consultă Medit Link App > Vizualizare fișier și Medit Link App > Vizualizează opțiuni pentru informații detaliate.
4	Lista cazurilor	Consultă Medit Link App > Filtrare și Căutare pentru informații detaliate.

Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.

Tip cont		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Conturi clinică	Administrator	O	O	O	X	X	O	O	O
	Membru	O	O	X	X	X	O	O * Numai funcția de restabilire	O
Cont de laborator	Administrator	X	X	X	O	O	O	O	O
	Membru	X	X	X	X	O	O	O * Numai funcția de restabilire	O

Bară de titlu

Bara de titlu furnizează acces rapid la funcții precum informațiile legate de cont, notificări, avize și actualizări, setări și starea rețelei.



Informațiile mele

Informațiile mele conține informațiile de bază ale utilizatorului cum ar fi profilul, numele clinicii sau al laboratorului, adresa de e-mail și numele de utilizator.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

Notificări

Poți vedea notificările legate de parteneriate, comenzi și procese de lucru.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Bifează caseta pentru a afișa numai mesajele necitite. |
| 2 | Clic pe orice notificare pentru a accesa instantaneu cazul sau pagina web aferentă. |

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Setări

Dialogul Setări permite utilizatorilor să configureze programul.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Consultă [Aplicația Medit Link > Setări](#) pentru informații detaliate despre opțiunile de setare.

Starea rețelei

Medit Link îți permite să utilizezi toate funcțiile fără probleme atunci când ești conectat la o rețea.

Pentru a te ajuta să verifici starea conexiunii de rețea în timp real, în bara de titlu este afișată pictograma de stare a rețelei.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Dacă conexiunea la rețea nu este bună, este posibil să apară următoarele restricții:

- Unele funcții vor fi restricționate, precum comandarea unui caz, crearea unui caz, partajarea prin Case Talk și sincronizarea cloud.
- Performanța generală a serviciului poate fi redusă din cauza impactului mediului de rețea.

În acest caz, poți intra în modul offline pentru a efectua sarcini de bază, iar apoi să folosești funcțiile care necesită internet odată ce ești conectat.

Aviz

Simbolul rețelei indică viteza de răspuns între zona curentă și AWS (Amazon Web Service). Nu se referă la viteza rețelei, așa că, uneori, poate afișa starea ca fiind slabă sau proastă, chiar dacă viteza rețelei este suficient de mare.

În cazul în care celălalt proces utilizează aceeași rețea, viteza poate fi slabă sau proastă, iar performanța generală a Medit Link poate fi proastă. În acest caz, te rugăm să nu partajezi rețeaua cu alte procese.

De exemplu, funcția „Încarcă date neprelucrate” este o parte uriașă a procesului de rețea. Dacă simbolul arată o stare slabă sau proastă, mergeți la Setări > Încarcă date neprelucrate și dezactivează „Încarcă automat”.

Setări

General

Oferă opțiuni pentru configurarea generală a sistemului.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links: General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is divided into sections: 'Save Folder' with a text field showing 'C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/' and a folder icon; 'Language Settings' with a dropdown menu set to 'English'; 'Teeth Labeling' with radio buttons for 'FDI' (selected) and 'US'; 'Notification' with a checked checkbox for 'Allow Notifications'; 'Upload Raw Data' with a checked checkbox for 'Upload Automatically'; 'Quick Scan' with a selected radio button for 'Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.' and an unchecked checkbox for 'Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan'; 'Viewing Options' with a checked checkbox for 'Advanced Rendering' and a slider for 'Adjust Color Texture' set to a medium value; and a footer section for the 'Medit User Experience Improvement Program' with a selected radio button for 'We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.' An 'Apply' button is at the bottom right. A 'Close' button is at the bottom right of the window frame.

Salvează folder-ul	Specifică un dosar pentru a stoca rezultatele datelor generate în Medit Link și în programele conectate.	
Setări de limbă	Selectează limba pentru program.	
Etichetarea dinților	Selectează un sistem de etichetare a dinților între FDI și US.	
Notificări	Atunci când este bifată, vei primi notificări pentru actualizările programului.	
Încarcă date neprelucrate	Atunci când este bifată, datele neprelucrate sunt încărcate automat în cloud. Ajută la salvarea datelor originale și la efectuarea unei scanări fără întreruperi atunci când se utilizează Medit Link cu același cont pe un alt calculator. Salvarea în cloud a datelor originale se aplică numai datelor dobândite în Medit Scan for Clinics.	
Scanare rapidă	Alege dacă vrei ca etapele de scanare de mai jos să apară automat în Medit Scan for Clinics fără să fie nevoie să completezi informațiile din formular. • Maxilar pre-operator • Mandibulă pre-operator • Scanare față	
Opțiuni de vizualizare	Redare avansată	Atunci când este bifată, modelul 3D este afișat într-o redare mai vie și mai realistă.
	Ajustează textura culorilor	Ajustează luminozitatea modelului 3D. * Culoarele rezultate pot fi ușor diferite față de Medit Link atunci când deschizi aceleași date cu un alt software.

Programul de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit	Alătură-te Programului de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit. • Utilizăm informațiile colectate pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile. • Nu colectăm nicio informație care să permită identificarea persoanelor fizice.
Pagina implicită după conectare	Selectează meniul implicit care va fi afișat la pornirea programului. • Conturile de clinică pot fi alese între Patient și Case Box • Conturile de laborator pot alege între In Box și Work Box

Managementul stocării

Verifică și gestionează spațiul de stocare local și în cloud.

The screenshot displays the 'Storage Management' section of a software interface. On the left is a sidebar with navigation options: Settings, General, Storage Management (selected), Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is titled 'Storage Management' and includes a 'Set Period' dropdown set to '1/1/2018-11/13/2023' with buttons for 'All', '1 Week Ago', '1 Month Ago', '6 Months Ago', and '1 Year Ago'. Below this, there are two columns: 'Local PC Storage' and 'Cloud Storage'. Each column features a donut chart showing storage usage. Under the charts are two identical panels for file management, each with a 'Total Selected 0.00 KB' indicator and a 'Delete' button. The 'Local PC Storage' panel lists: 'Raw Data' (26.89 GB), 'Result Files & Attachments' (2.54 GB), and 'Others' (666.76 GB). The 'Cloud Storage' panel lists: 'Raw Data' (837.95 GB) and 'Result Files & Attachments' (36.53 GB). A 'Close' button is located at the bottom right of the interface.

Setează perioada

Stabilește perioada specifică pentru a șterge datele create în intervalul de timp de mai jos.

- Toate: Vezi toate fișierele.
- Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare.
- Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună.
- Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni.
- Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.

Stocare locală

Gestionează spațiul de stocare al calculatorului.

Date neprelucrate	Elimină datele brute selectate de pe PC. Dacă datele neprelucrate sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.
-------------------	--

Rezultat & Atașament	Elimină fișierele rezultate și fișierele atașate de pe PC, cum ar fi rețele, imagini și videoclipuri. Dacă aceste fișiere sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.
Altele	Consultă fișierele utilizate pentru a opera sistemul și alte programe. Afișează spațiul de stocare al calculatorului tău. Nu poți elimina aceste fișiere din Medit Link.
Șterge	Elimină fișierele selectate de pe calculator.


Spațiu de stocare Cloud

Gestionează spațiul de stocare în cloud.

Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele neprelucrate de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului, etc.
Rezultat & Atașament	Rezultatul și fișierele atașate ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Cumpără stocare	Dacă ai un plan Standard, abonează-te la cel Premium pentru a-ți extinde spațiul de stocare în cloud.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu de stocare.

Setează programul conectat

Administrează programele care sprijină integrarea în Medit Link.

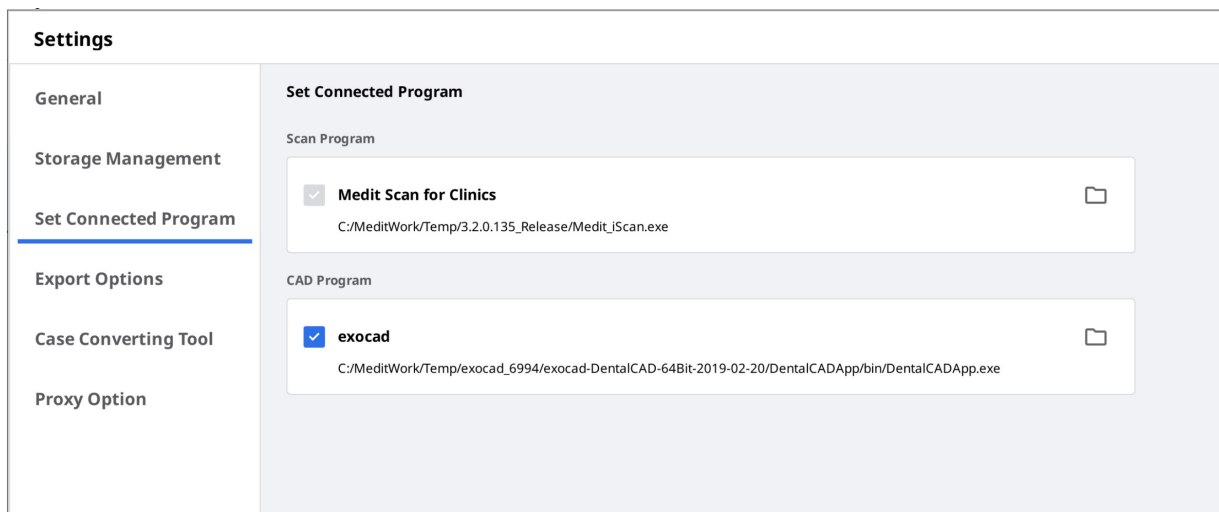

Poți conecta următoarele programe:


	Contul clinicii	Cont de laborator
Program de scanare	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Program CAD	exocad	exocad

Integrarea următoarelor servicii nu este disponibilă pentru Medit Link pentru Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opțiuni de export

Stabilește modul de export al fișierelor din Medit Link.

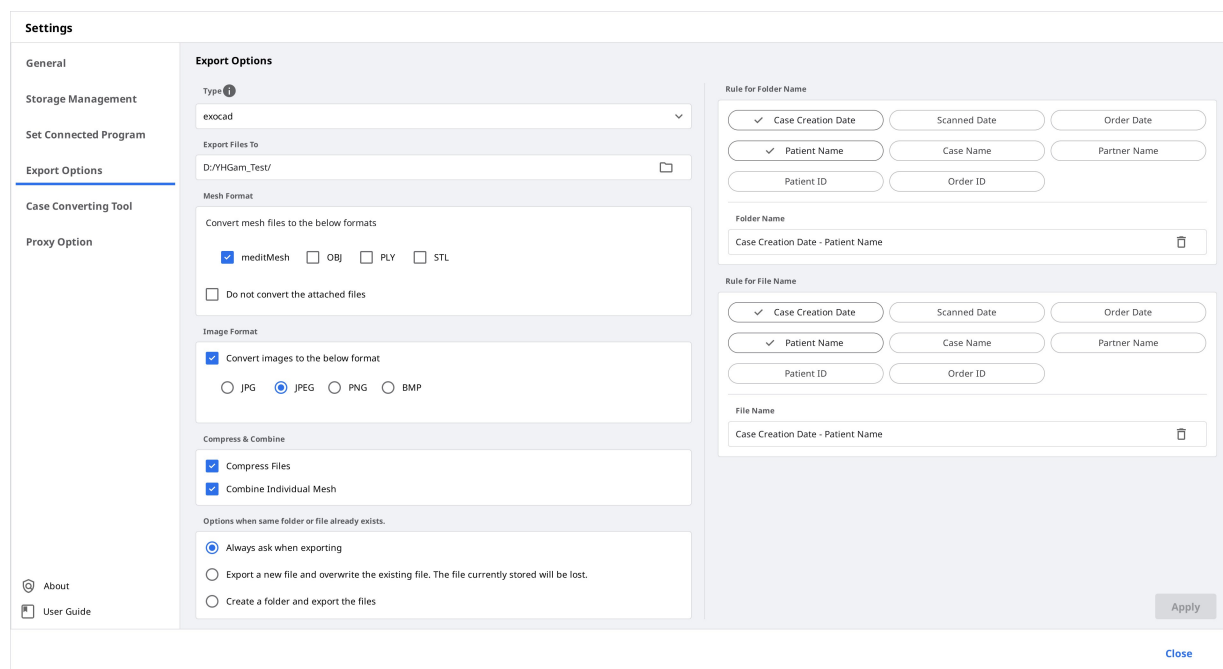

Tip CAD	Selectează programul CAD pe care vrei să îl folosești pentru proiectare. Programul va ajusta rezultatele pe baza selecției tale, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Exportă fișiere în	Specifică calea în care dorești să stocjezi rezultatele.
Format rețea	Specifică formatul fișierului final al rețelei.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimare și combinare	Comprimă fișierele: Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier. Combină rețeaua individuală: Combină toate rezultatele pentru maxilar sau mandibulă într-un singur fișier. Atunci când folosești unele programe care nu pot importa și lucra cu mai multe fișiere, le poți unifica într-unul singur pentru a lucra în acele programe.
Opțiuni pentru situațiile în care același folder sau fișier există deja.	Alege acțiunea implicită pentru cazurile în care există același dosar sau nume de fișier în calea țintă. • Întreabă întotdeauna când exporti. • Exportă un nou fișier și suprascrie fișierele existente. Fișierul stocat în prezent va fi pierdut. • Creează un folder și exportă fișierele

Regula pentru numele folderului	Definește regulile de creare a unui nume de dosar la exportul de fișiere. Regula setată va fi aplicată la denumirea dosarelor, iar fișierul exportat va fi salvat în dosarul creat. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. - Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii - Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii
Regula pentru numele fișierului	Definește reguli pentru numele fișierelor exportate. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. - Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii - Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii

Instrument de conversie a cazurilor

Poți muta cazurile între diferite conturi exportând cazurile contului sau importând cazurile exportate din alte conturi.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditx

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

About

User Guide


Export

Close


Exportă caz

Exportă cazurile contului conectat acum în calculatorul local.


1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

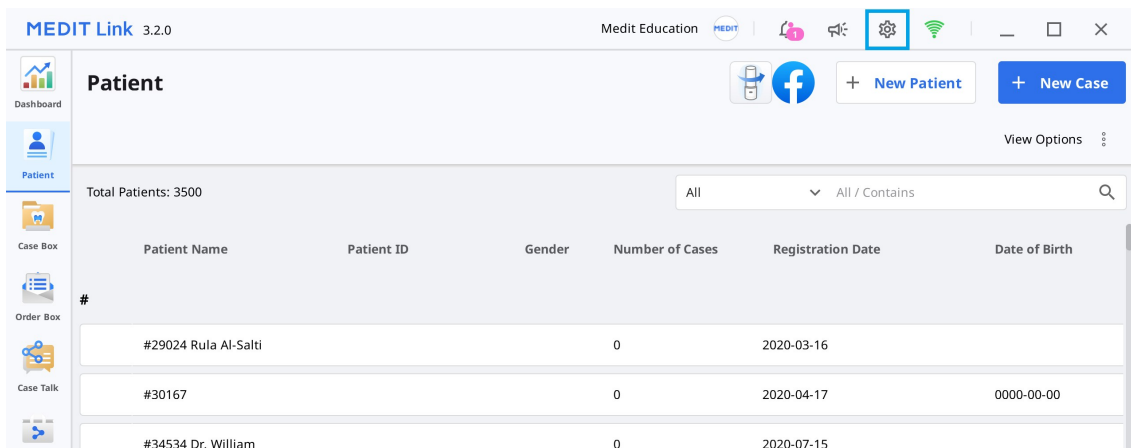


2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

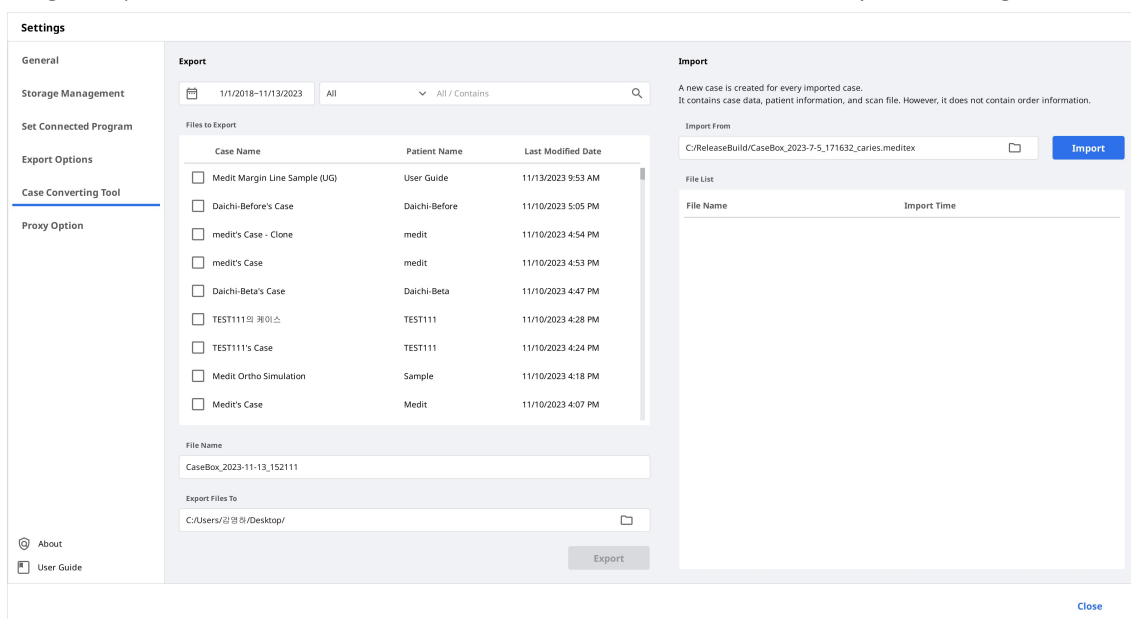

3. În secțiunea Exportă, stabilește o perioadă sau caută cazuri de exportat dacă este necesar.

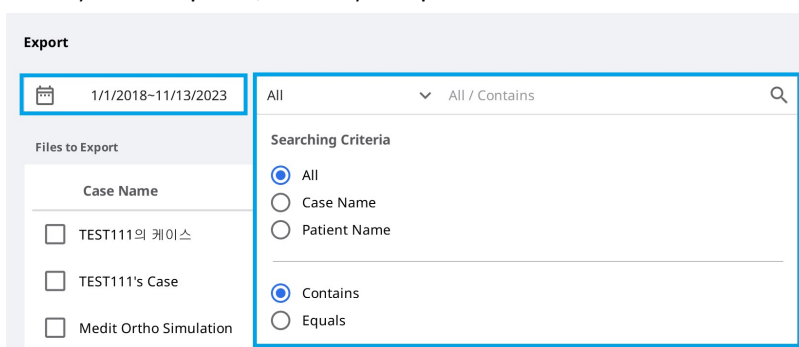

4. Alege cazurile pe care vrei să le exporti din lista din secțiunea „Fișiere la Exportă”.

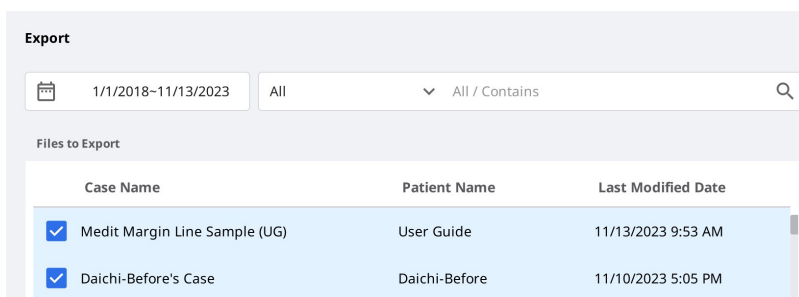

5. Setează numele fișierului editând numele cazurilor în câmpul Nume fișier.
6. Setează destinația dosarului pentru a exporta cazurile selectate.
7. Clic „Exportă”.
8. Clic „Da” pentru a deschide fișierul unde sunt exportate fișierele.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


9. Cazurile exportate sunt salvate în formatul de fișier .meditex.

Importă caz


1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

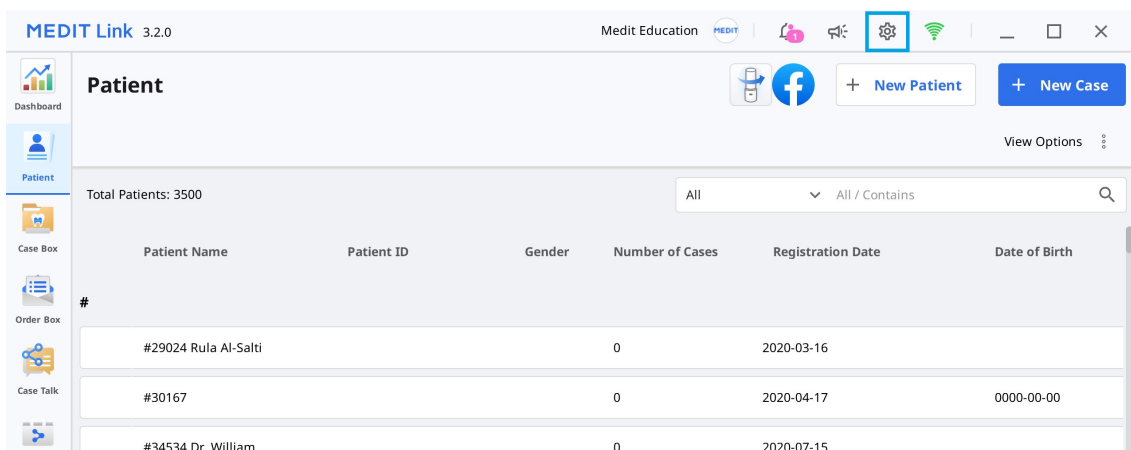

2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

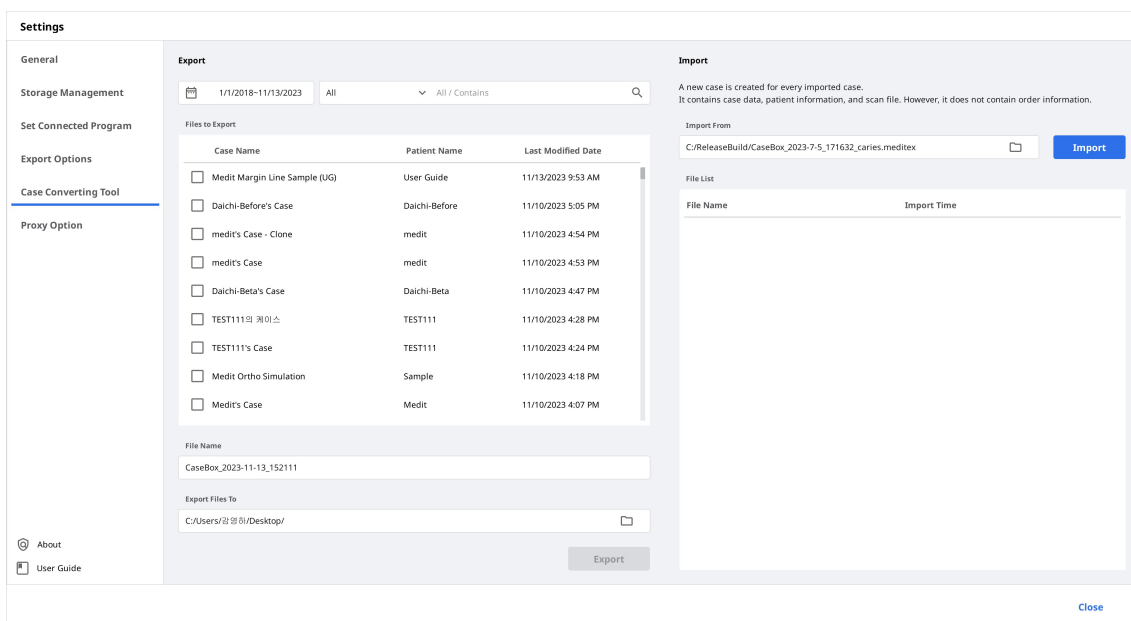

3. În secțiunea Importă, clic pe pictograma dosarului pentru a căuta pe calculator fișierul .meditex pe care dorești să-l exporti.

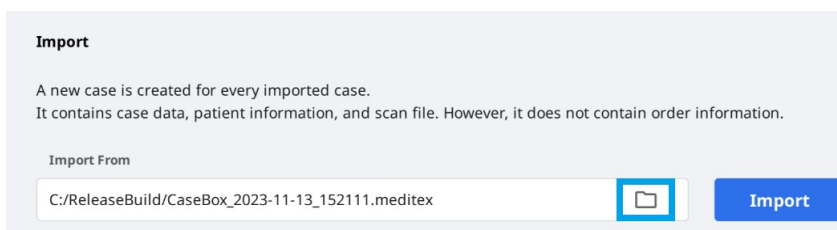

4. Clic butonul „Importă” și verifică fișierele pe care le importi în lista de mai jos.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Cazul importat va apărea, de asemenea, în Case Box (cont de clinică) sau în Work Box (cont de laborator).

Opțiuni proxy

În unele medii de rețea limitate, poți modifica setările de rețea.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Apply

Close

Despre

Afișează informații detaliate despre Medit Link.

About

MEDIT Link *Beta*

v 3.2.0 Build 107
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



[Close](#)

Manualul utilizatorului


Obține manualul de utilizare pentru Medit Link.

Deschiderea ghidului utilizatorului necesită o conexiune la internet.

Meniu

Dashborad

Poți vizualiza statisticile pentru întreaga activitate desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

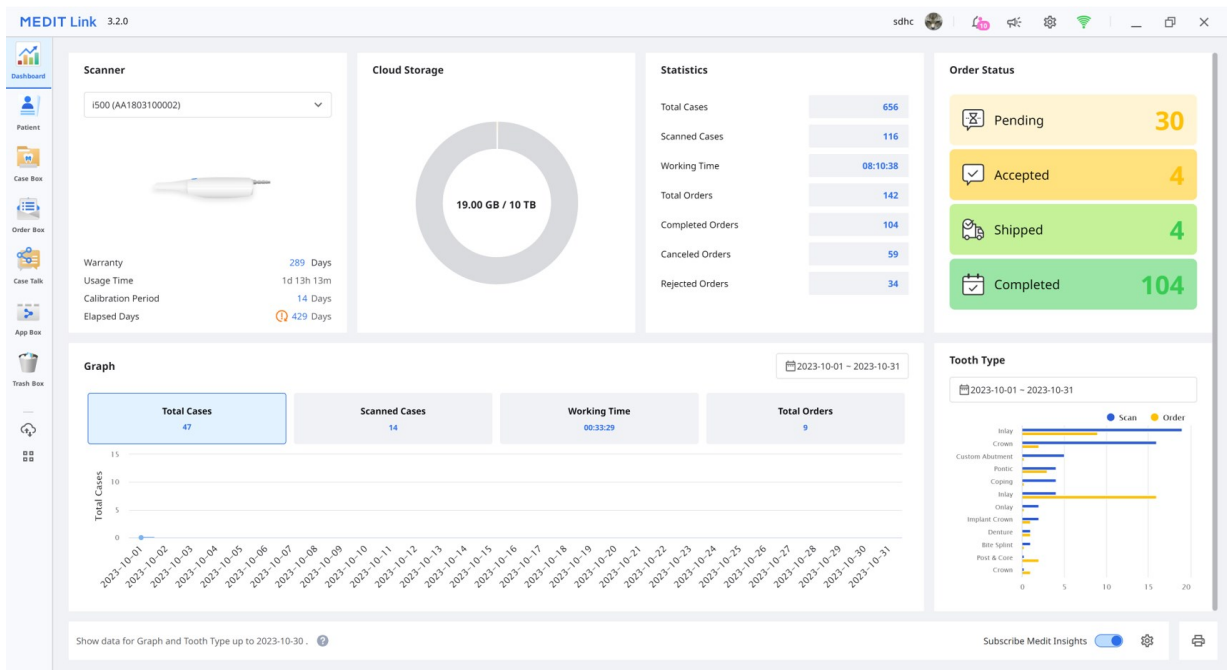

Consultă [Medit Link Web > Dashboard](#) pentru mai multe informații despre tabloul de bord și Medit Insights.

Patient

Poți adăuga, edita, șterge sau fuziona pacienții în meniul Patient.

MEDIT Link 3.2.0

Patient


Total Patients: 106

View Options

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
K k						
KELLY				1	2021-07-02	Scan
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
N n						
newpatient				1	2022-10-13	Scan
O o						
ORG_Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan
R r						

Adaugă pacient nou

1. Clic „Pacient nou”.

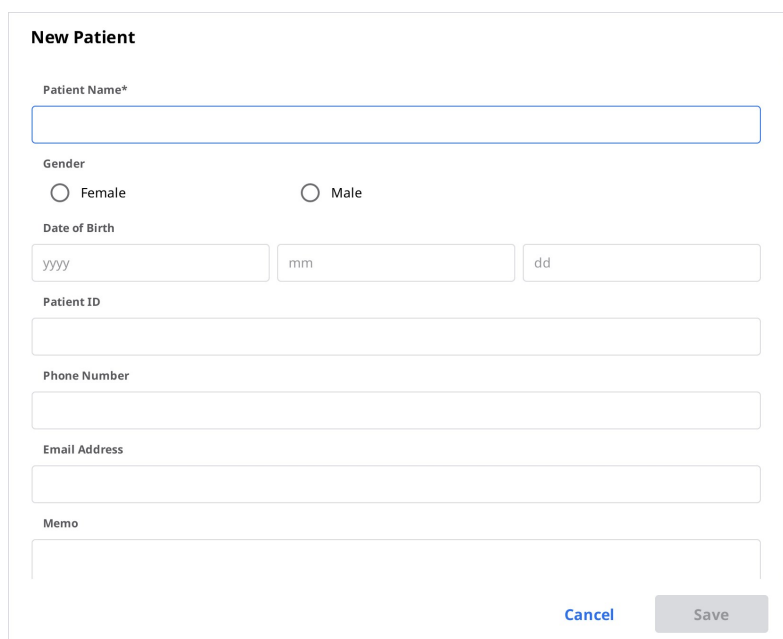

The 'New Patient' form contains the following fields and options:

- Patient Name* (text input)
- Gender: ☐ Female, ☐ Male
- Date of Birth: Three separate inputs for yyyy, mm, and dd.
- Patient ID (text input)
- Phone Number (text input)
- Email Address (text input)
- Memo (text area)
- Buttons: Cancel (blue), Save (grey)


2. Completează informațiile necesare în fereastra de dialog Pacient nou, apoi clic pe „Salvează”.

Șterge pacienți



Poți șterge un pacient numai atunci când nu mai există cazuri pentru pacient.

1. Selectează pacientul pe care dorești să îl ștergi din listă.

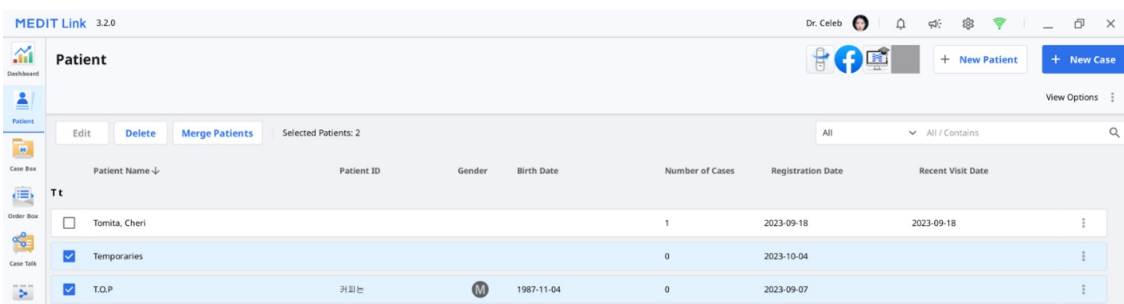

The screenshot shows the 'Patient' management interface in MEDIT Link 3.2.0. It includes a sidebar with navigation icons and a main table of patients. The table has columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registration Date, and Recent Visit Date. Two patients are listed: 'Tomita, Cheri' and 'T.O.P.'. The 'T.O.P.' patient is selected, and the 'Delete' button is visible in the top bar.


Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Temporaries				0	2023-10-04	
T.O.P.	키리토	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Clic „Șterge”.


Combină pacienți

Poți unifica toate cazurile mai multor pacienți într-un singur pacient.

1. Selectează din listă pacienții pe care vrei să îi unifici.

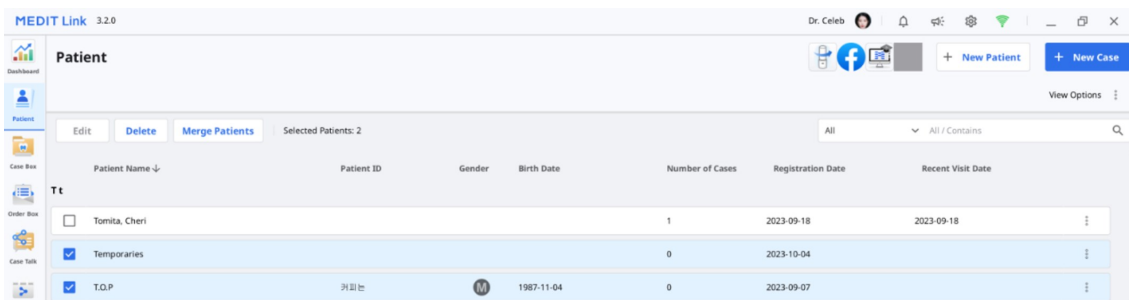


2. Clic „Combină pacienți”.
3. Selectează pacientul țintă în care vrei să fuzionezi toate cazurile.
4. Toate cazurile sunt comasate în pacientul țintă, iar informațiile despre pacient sunt păstrate.

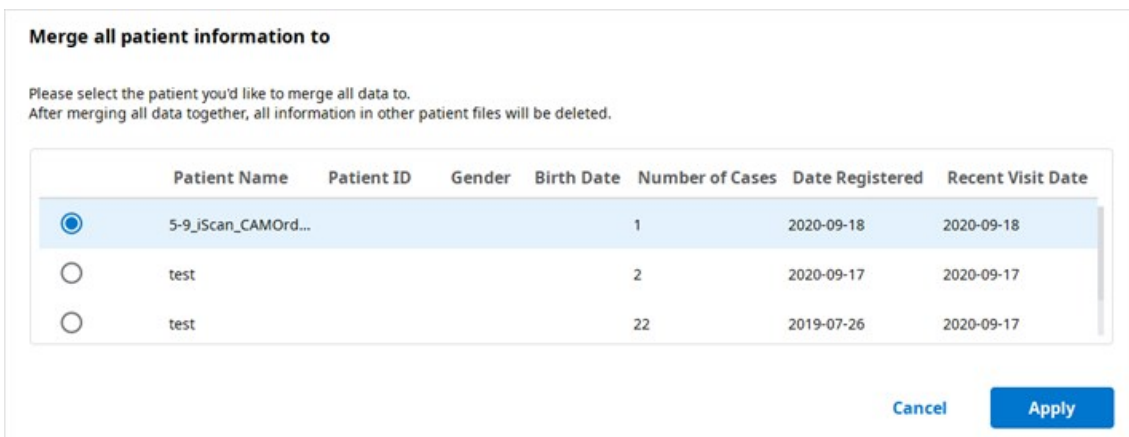

5. Clic „Aplică” pentru a continua cu fuzionarea.

Case Box/Work Box

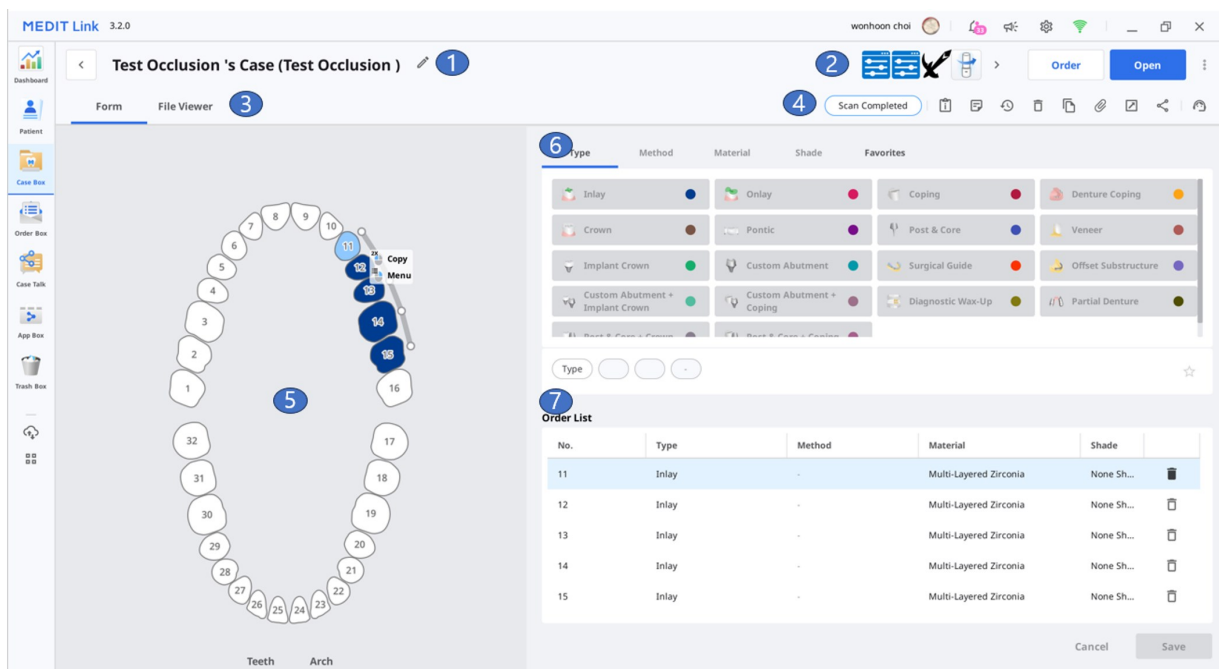

- 1 Afișează numele cazului și numele pacientului.
- 2 Furnizează principalele caracteristici disponibile: Butoane de comandă/scanare (Deschide)/comandă și pictograme de aplicații.
- 3 Afișează filele disponibile: Formular, CAD și Vizualizare fișier.
- 4 Afișează funcțiile de gestionare a cazurilor și a dosarelor.

5	Afișează interfața de înregistrare a formularului pentru programul CAD selectat.
6	Furnizează informații privind tipul/metoda/materialul/nuanța pe care utilizatorii le pot alege pentru numărul de dinți selectat.
7	Afișează tipul/metoda/materialul/informațiile privind nuanțele aplicate dinților selectați.

File în Case Box/Work Box

Formular	CAD	Vizualizare fișier
Fila Formular oferă o interfață de utilizare pentru introducerea informațiilor de bază pentru scanarea lucrărilor, cum ar fi tipul, metoda, materialul pentru numerele dinților și opțiunile de scanare. Informațiile pe care le introduci sunt transmise programului de scanare conectat și sunt utilizate ca informații de comandă atunci când se plasează o comandă la partenerul tău.	Fila CAD oferă o interfață pentru a seta opțiunile CAD. Informațiile pe care le configurează sunt transmise programului CAD conectat.	Vizualizează fișierele de rezultate generate de programele de scanare și CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D achiziționate sau atașate.


Funcții în Case Box/Work Box

Sunt prevăzute următoarele funcții în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la detalii	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo & etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Istoricul cazului	Furnizează informații detaliate despre istoricul cazului. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Șterge	Șterge cazul. Nu poți șterge cazurile comandate sau cazurile care au fost create offline.

	Clonează	Creează un duplicat al cazului curent în Case Box. Toate datele vor fi copiate în cazul clonat. Această funcție ajută la replicarea informațiilor de tratament pentru același pacient sau la efectuarea unei comenzi suplimentare cu aceleași informații sau fișiere.
	Atașează	Atașează fișiere în diverse formate.
	Exportă	Exportă fișierele de scanare sau de rezultate CAD pe calculatorul local. Poți alege formatul de fișier preferat când exportezi fișierele. Fișierele exportate pot fi utilizate în software-ele CAD și CAM pentru lucrări ulterioare.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser precum Chrome, Firefox sau Safari fără a instala programe suplimentare. Poți partaja linkul în mod liber cu oricine sau doar cu anumite persoane. Se poate seta un cod PIN sau o dată de expirare a legăturii pentru a securiza informațiile private.
	Trimite solicitare de asistență	Accesează o pagină a Centrului de ajutor Medit pentru a trimite o cerere de suport.

Order Box/In Box

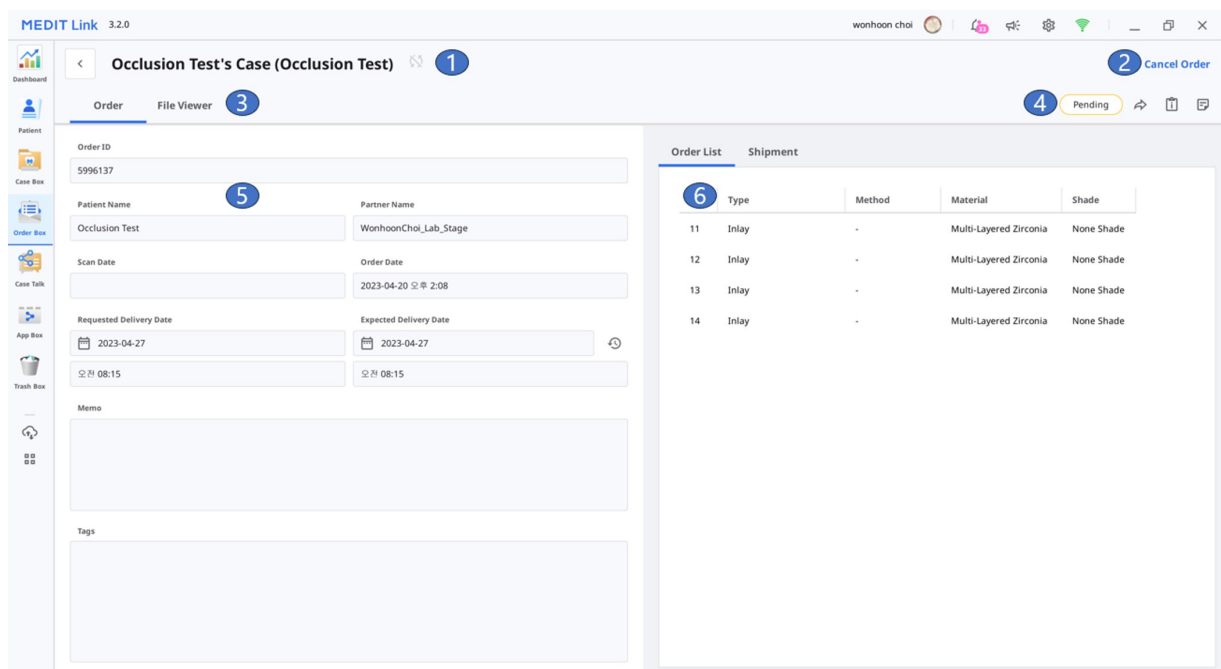

The screenshot displays the MEDIT Link 3.2.0 application window. The title bar shows the user 'wonhoon choi'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a 'Cancel Order' button (labeled 2) and a 'Pending' status indicator (labeled 4).
- Left Sidebar:** Contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box.
- Main Content Area:**
 - Order Section (labeled 3):** Displays 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)'. It includes form fields for Order ID (5996137), Patient Name (Occlusion Test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scan Date, Order Date (2023-04-20 2:08), Requested Delivery Date (2023-04-27), and Expected Delivery Date (2023-04-27). There are also fields for Memo and Tags.
 - Order List Section (labeled 6):** A table showing a list of orders.

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

- 1 Afișează numele cazului și numele pacientului.
- 2 Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție).
- 3 Afișează filele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier
- 4 Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc.

5	Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete.
6	Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării.

File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate legate de comandă, cum ar fi numărul comenzii, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, memo și etichete.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumiți oameni, oricine cu un link de partajare sau membri înregistrați ai Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin intermediul Case Talk în aplicația Medit Link App și Medit Link Web.



Serviciul Case Talk necesită o conexiune la internet.

MEDIT Link 3.2.0						
Case Talk						
2018-01-01 ~ 2023-11-01		Case Talk Name		Case Talk Name / Contains		
Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** f* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59	
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59	
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited	


Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.

App Box

App Box oferă diverse programe adiționale care completează fluxul de lucru de bază al scanării și sporesc productivitatea.

App Box este format din „Medit Apps”, care include aplicații originale dezvoltate de Medit, și „Partner Apps”, care sunt aplicații de integrare cu partenerii Medit din diferite sectoare ale stomatologiei digitale, cum ar fi imprimarea 3D, software CAD/CAM etc.

Descarcă aplicațiile disponibile de la Medit Apps și Partners App pentru a crea aparate dentare, pentru a analiza datele de scanare, pentru a te ajuta în timpul unei consultații sau pentru a-ți eficientiza procesul de lucru.

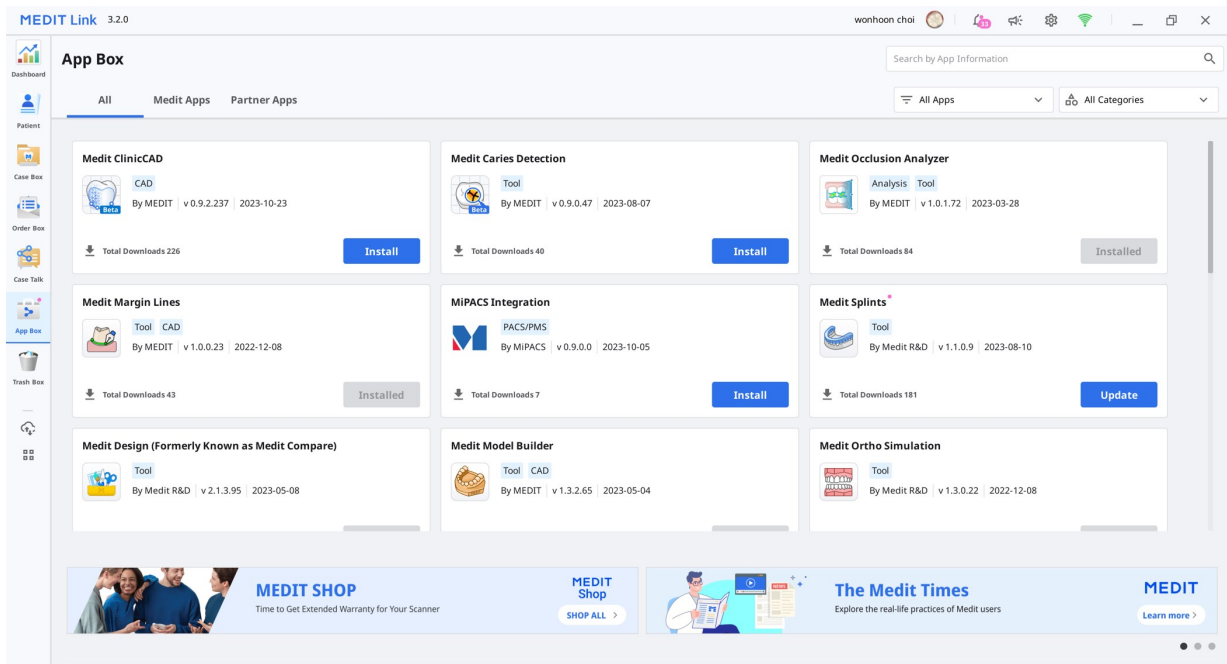

Trash Box

Trash Box stochează temporar cazurile șterse. Orice caz din Trash Box poate fi restaurat sau șters definitiv.

⚠️ Atenție

Datele șterse din Trash Box vor fi șterse definitiv de pe calculator și de pe server și nu vor putea fi recuperate.

Trash Box

Restore | Selected Cases: 0

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Scan Completed	Jlra_잉플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	잉플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Manager sincronizare caz

Manager sincronizare caz te ajută să încarci și să descarci cazurile în Medit Link. Poți încărca mai multe cazuri în cloud sau le poți descărca pe calculatorul tău local.

[illegible]

Încarcă

Total cazuri / Cazuri selectate	Verifică numărul de cazuri toate/selectate care trebuie să fie încărcate.
Încarcă tot	Încarcă toate cazurile în cloud.
Anulează tot	Anulează toate cererile de încărcare.
	Încarcă cazul în cloud.
	Anulează încărcarea cazului.
	Încearcă din nou să încarci cazul.

Descarcă


Total cazuri / Cazuri selectate	Verifică numărul de cazuri toate/selectate care trebuie să fie descărcate.
Descarcă tot	Descarcă toate cazurile pe calculator.
Anulează tot	Anulează toate cererile de descărcare.
	Descarcă cazul pe calculator.
	Anulează descărcarea cazului.
	Încearcă din nou să descarci cazul.

Medit informații

Poți accesa direct meniurile disponibile doar pe Medit Link Web, cum ar fi My Info, Partners și Membership. Consultă Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#), și [My Info](#) pentru descrieri detaliate ale meniului Medit Link Web.

Poți accesa magazinul online al Medit, Medit Shop, unde poți achiziționa garanții extinse pentru scanere și alte produse Medit, cum ar fi rucsacurile pentru scanere.

De asemenea, poți obține diferite informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale Medit, precum Centrul de ajutor Medit, canalul de YouTube Medit Academy și platforma online educațională Medit Academy.

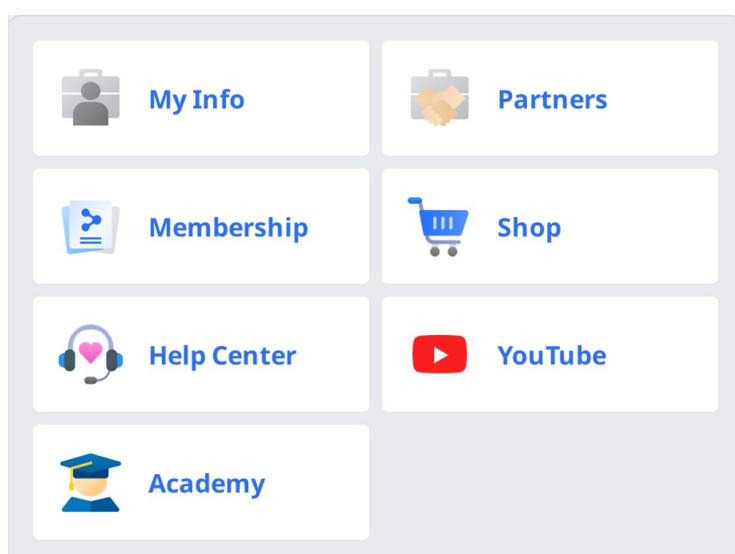

Vizualizare fișier

Vizualizatorul de fișiere grupează și afișează diverse date, inclusiv datele obținute de la programele conectate la Medit Link și datele atașate de către utilizatori.

Oferă funcții de gestionare de bază, cum ar fi afișarea/ascunderea datelor, ajustarea opacității și ștergerea datelor.

Acceptă previzualizări ale fișierelor în următoarele formate:

- Date 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Fișiere video: MKV, MP4, AVI, WMV

Arbore de date

Poți să grupezi și să afișezi toate datele pentru caz în arborele de date. De asemenea, poți afișa/ascunde date, ajusta transparența și șterge date din arborele de date.

	Afișează / Ascunde	Poți afișa sau ascunde datele.
	Opacitate	Bara de diapozitive apare atunci când faci clic pe una dintre datele din arborele de date. Poți ajusta opacitatea datelor afișate prin deplasarea barei glisante. 
	Altele	Dacă faci clic pe pictograma Altele, se afișează caracteristicile suplimentare disponibile.  • Afișează doar asta: Ascunde toate celelalte date, dar afișează numai datele corespunzătoare. • Ascunde: Ascunde datele. • Duplicat: Copiază datele și le adaugă la grupul de atașamente. • Exportă: Exportă fișierele selectate. • Redenumeste: Schimbă numele datelor. • Șterge: Șterge datele.



Aviz


Poți redenumi datele atunci când ești online.

Instrumente de control model


Control model 3D

	Panoramă	Mută modelul.
	Rotește	Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
	Mod de afișare a modelului	Textură pornită
		Textură oprită
	Setări grilă (mm)	Grilă pornită
		Suprapunere pornită
		Grilă oprită


Afișează datele în culori reale de textură.

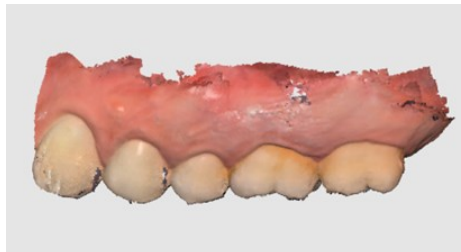


Afișează datele într-o singură culoare.

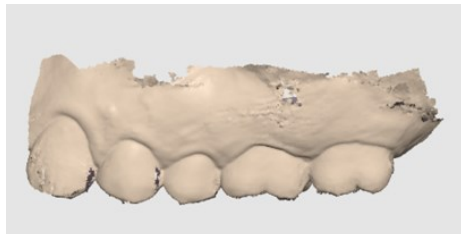

Afișează grila pe fundal.

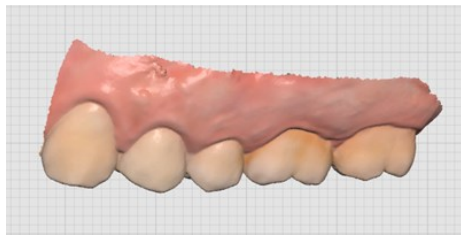

Suprapune grila peste model.

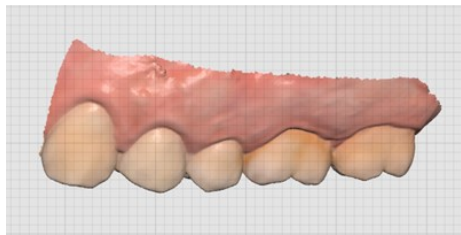

Ascunde grila.

Control imagine 2D


	Imaginea următoare/precedentă	Deplasează printre imagini.
	Editează	Editează imaginea.
	Prinde/lipește fereastra	Poți detașa fereastra de imagine și o poți ajusta în poziția dorită. Poți redimensiona fereastra. Când fereastra este readusă la locația inițială, aceasta revine la dimensiunea sa implicită.

Instrumente de funcție

Captura imaginii și Memo


Capturează ecranul curent ca imagine 2D, desenează pe el sau adaugă notițe.


Îl poți salva ca fișier cu notele tale și îl poți trimite ca referință.

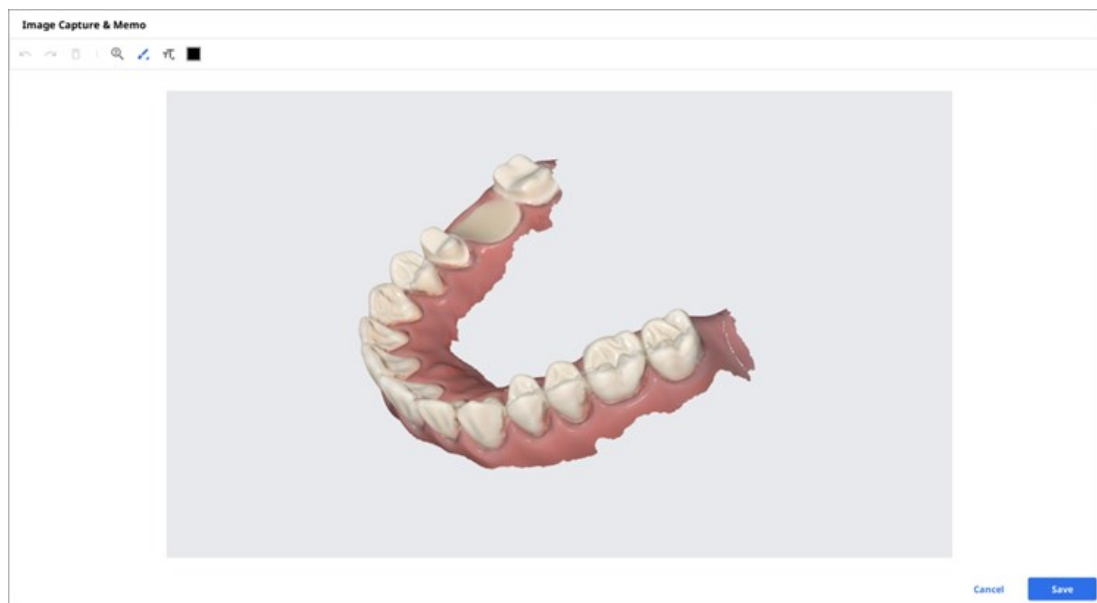

Captură orto


Captează imaginile în direcția curentă de vizualizare și sus/jos/stânga/dreapta din direcția curentă de vizualizare.

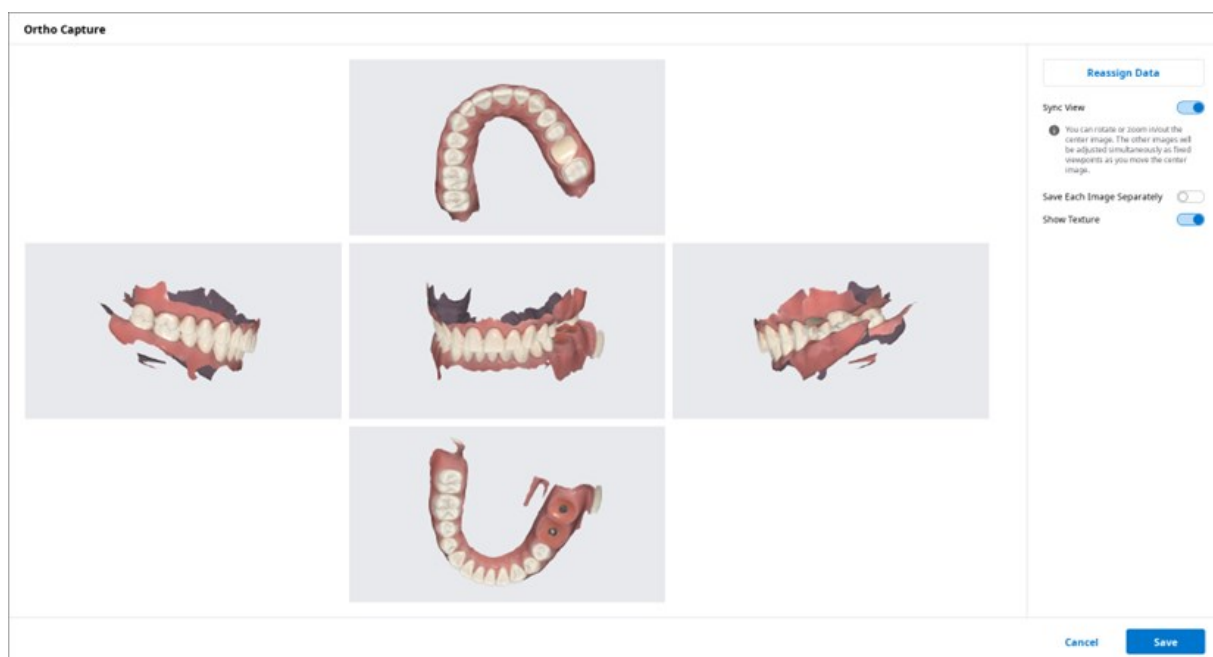

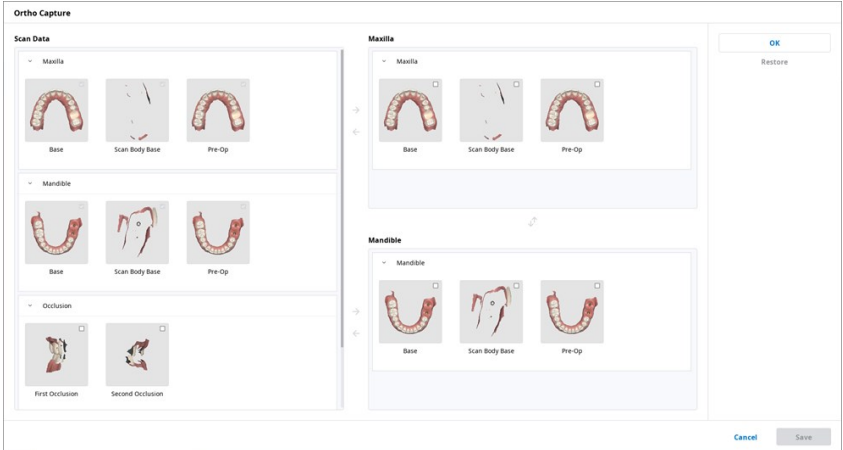Sincronizează vizualizarea	Când este activată, poți roti sau mări/micșora imaginea centrală. Celelalte imagini vor fi ajustate simultan ca puncte de vedere fixe pe măsură ce muți imaginea centrală. Atunci când este dezactivat, poți face panoramare, roti sau mări/micșora toate imaginile în mod individual.
Salvează fiecare imagine separat	Salvează fiecare imagine la rezoluție înaltă.
Afișează textura	Pornește/oprește textura pentru model.
Reatribuie date	Schimbă datele pentru maxilar/mandibulă cu ajutorul funcției Reatribuie date. Poți folosi datele modificate pentru a crea și utiliza imaginile rezultate din Captură Orto.  • Date de scanare: Sunt afișate toate datele de scanare pentru caz. • Maxilar: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru maxilar. • Mandibulă: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru mandibulă.


Umple găuri

Umple găurile din datele de plasă 3D.

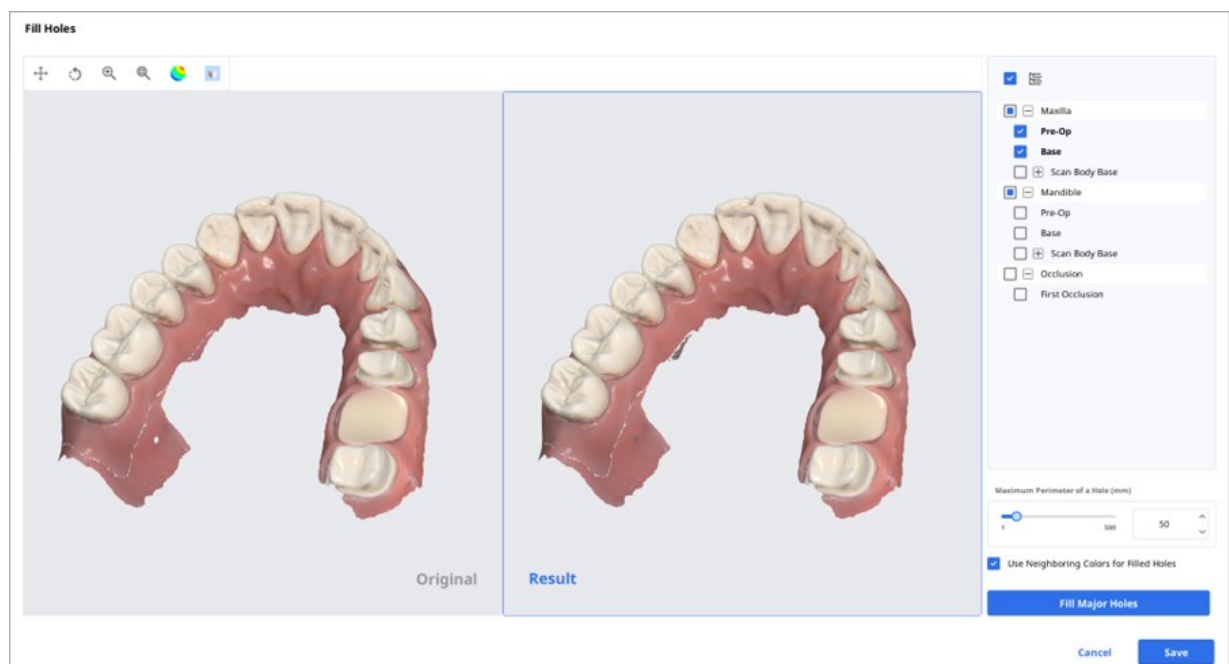

Decupare

Decuparea oferă diverse instrumente de editare a datelor.

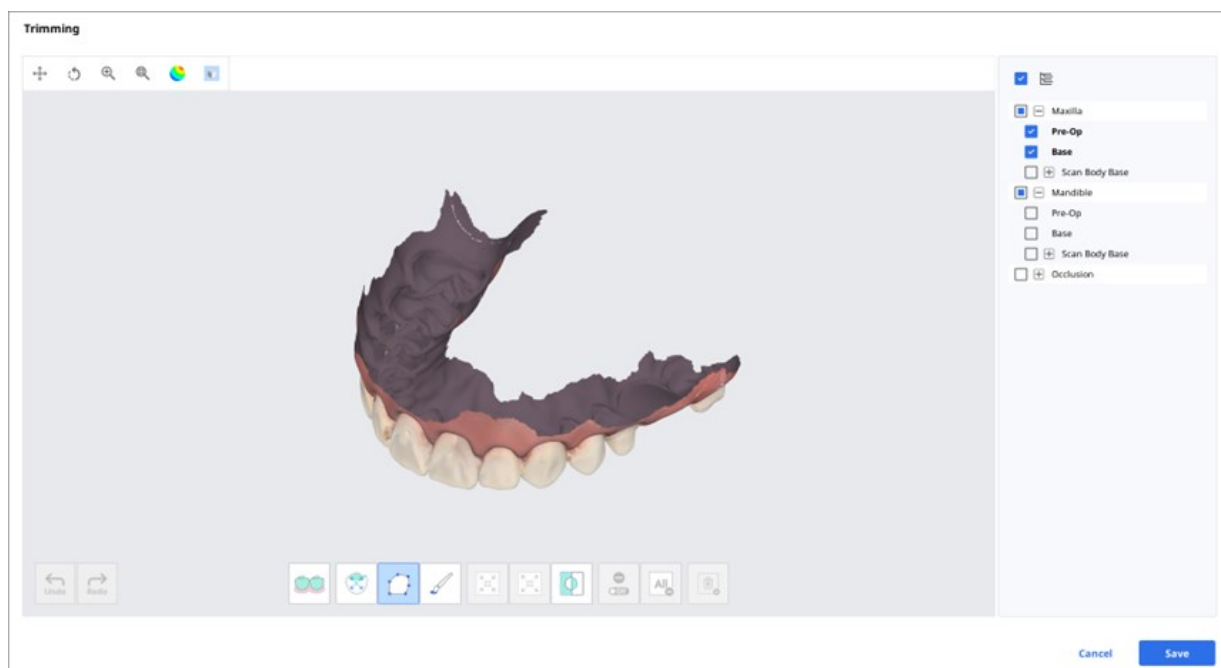


Datele de rețea 3D selectate pot fi editate cu ajutorul diferitelor instrumente situate în partea de jos a ferestrei.

Selecție		Selecție inteligentă a dinților	Selectează automat toți dinții de pe arcadă lăsând gingia la o parte. Aviz Această funcție este disponibilă doar pentru date de scanare obținute utilizând Medit Scan for Clinics cu opțiunea „Utilizează GPU” pornită.
		Selecție inteligentă a dintelui	Selectează automat zona unui singur dinte cu un singur clic. Poți face clic și trage pe dinte.
		Selectare polilinie	Selectează toate entitățile din interiorul unei forme poliliniale desenate pe ecran.
		Selectare pensulă	Selectează toate entitățile de pe o traiectorie desenată cu mâna liberă pe ecran. Doar fața frontală va fi selectată. Pensula vine în trei mărimi diferite.
Ajustarea zonei selectate		Micșorează zona selectată	Reduce zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Extinde zona selectată	Extinde zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Inversează zona selectată	Inversează selecția.
Deselectare		Selecție/Deselecție	Când este activată, deselectează zona cu ajutorul diferitelor instrumente.
		Șterge toată selecția	Șterge toate zonele selectate.

	Șterge zona selectată	Șterge datele din zona selectată.
---	-----------------------	-----------------------------------


1. Selectează zona pe care vrei să o decupei cu ajutorul instrumentelor de selecție a zonei.

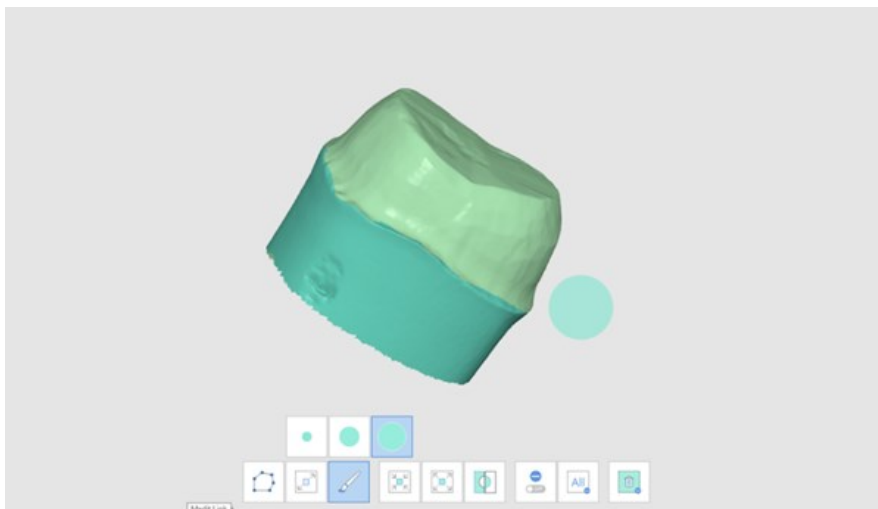


 Aviz

Instrumentul de decupare polilinie selectează toate entitățile dintr-o formă polilinie desenată pe ecran, în timp ce instrumentul de decupare cu pensulă selectează numai datele feței frontale.


2. Poți inversa, micșora sau extinde selecția cu următoarele 3 instrumente.
 - Inversează zona selectată

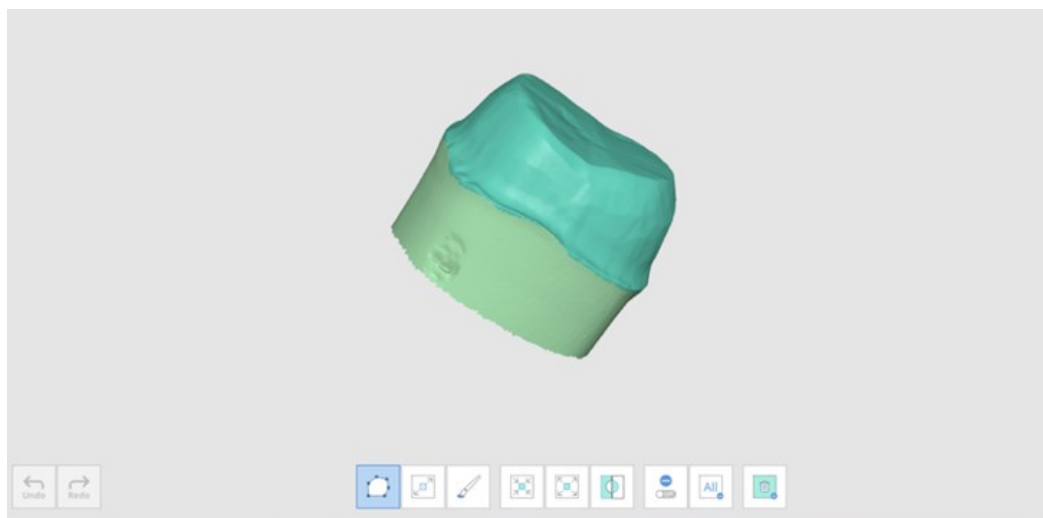

- Micșorează zona selectată

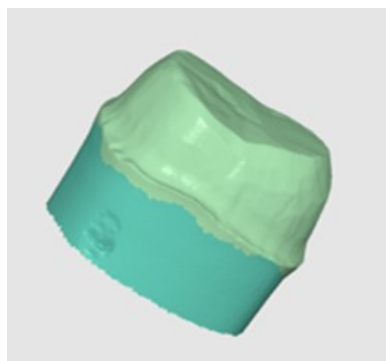


- Extinde zona selectată

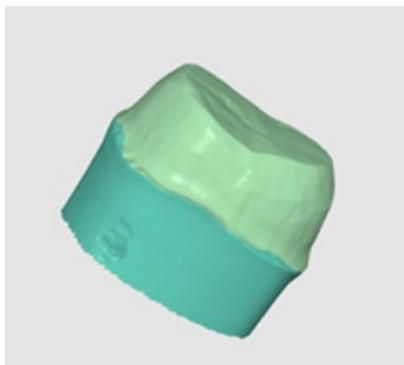

- Poți deselecta zonele selectate cu ajutorul instrumentului Șterge zona selectată.


Optimizează alinierea ocluziei

Optimizează alinierea ocluziei. Poți alege datele țintă și ajusta alinierea ocluziei.

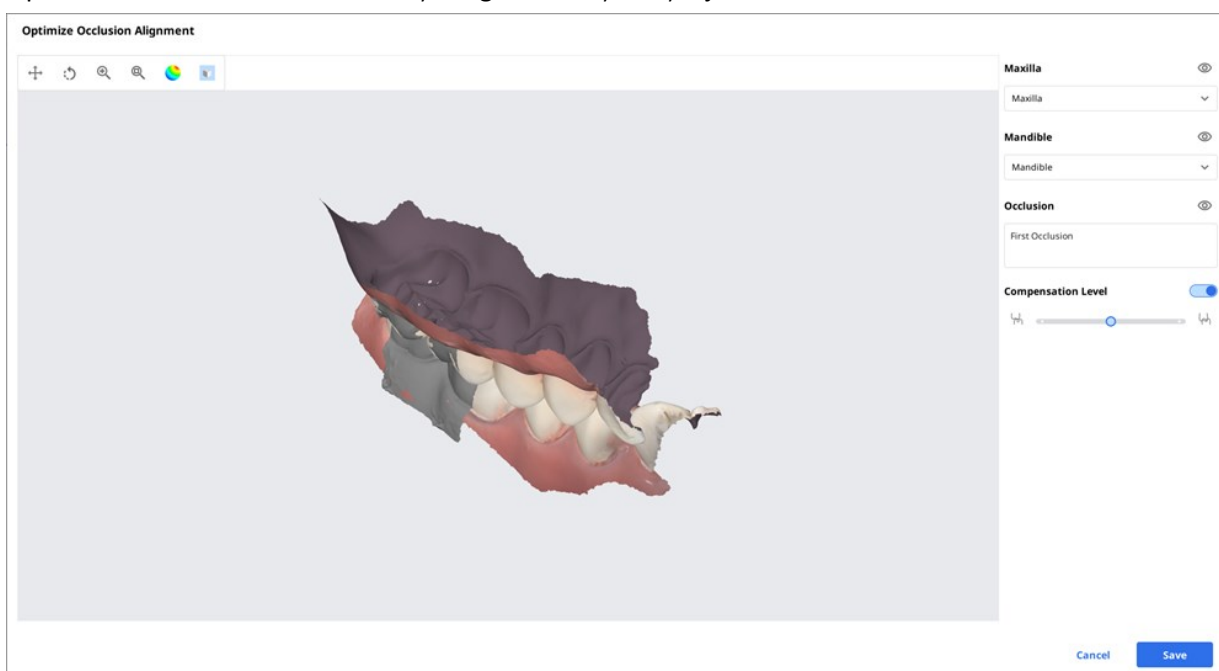


Nivel compensație

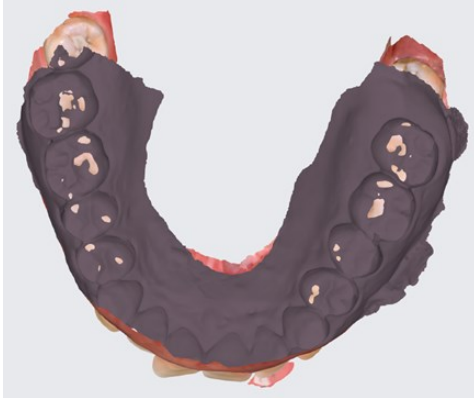

Mediu	Compensation Level 	
Ridicat	Compensation Level 	
Dezactivat	Compensation Level 	

Mișcarea mandibulară

Poți reda mișcările mandibulare înregistrate în Medit Scan for Clinics pentru a vedea contactele ocluzale dinamice dintre dentiția superioară și cea inferioară.

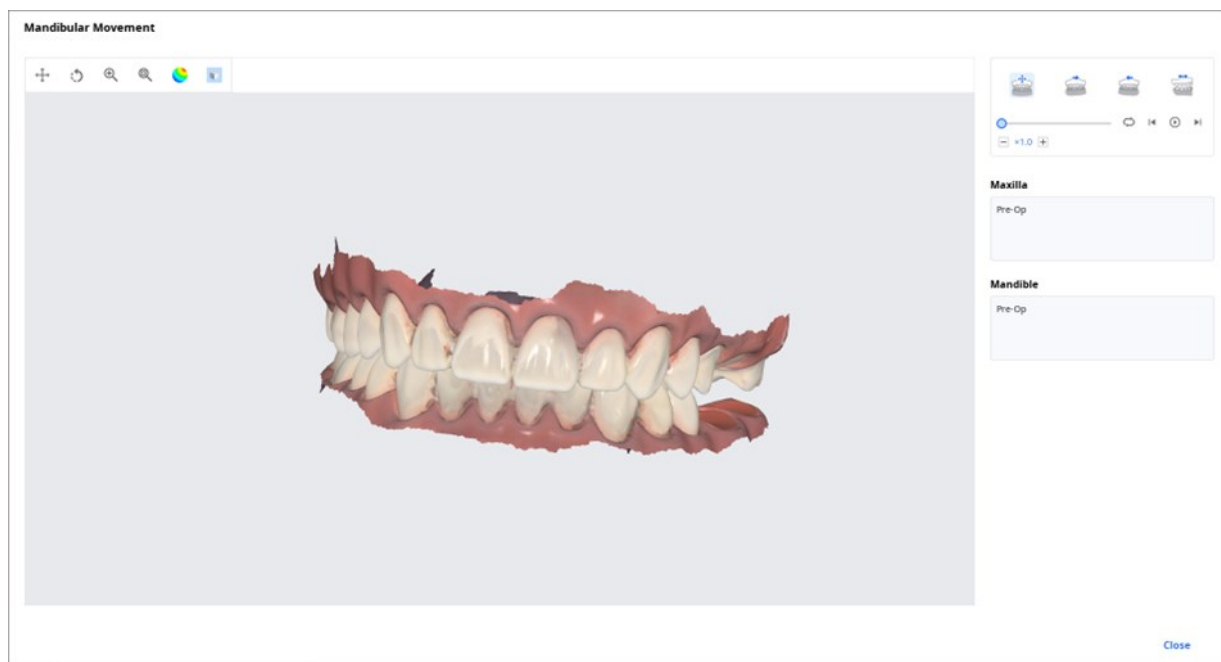

	Mișcare liberă	Redă înregistrarea cu mișcarea liberă a mandibulei.
	Mișcarea laterală stângă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre stânga.
	Mișcarea laterală dreaptă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre dreapta.
	Mișcare protuberantă	Redă înregistrarea cu mandibula care se mișcă înainte.

Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier

Poți obține mai multe rezultate ale datelor de ocluzie din aplicația Medit Scan.

Medit Link oferă funcția de gestionare a rezultatelor prin intermediul „Vizualizare fișier”.

Cum se gestionează mai multe rezultate


Atunci când utilizatorul primește mai multe rezultate de ocluzie de la Medit Scan for Clinics, Medit Link oferă opțiunea de a selecta un rezultat.

Lista de rezultate este listată după nume și poți selecta un element.

Modelul selectat va fi afișat în „Arbore de date” și în „Zona de afișare a modelului”.



Poți să reduci lista și să schimbi elementul cu ajutorul pictogramelor săgeată.

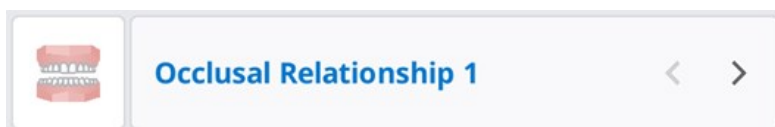

Vizualizează opțiuni

Poți schimba Vizualizează opțiuni pentru a personaliza aspectul listei de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statut filtre

Afișează sau ascunde fiecare filtru care reprezintă starea cazului. Filtrele de stare ascunse nu sunt afișate pe ecran în Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Poți găsi cu ușurință cazul de care ai nevoie cu ajutorul filtrelor de stare.

- Poți face clic pe starea pe care dorești să o vizualizezi pentru a afișa numai cazurile aflate în starea respectivă.
- Poți selecta mai multe stări deodată.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de filtrare:

Box	Statut filtre
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabel articole

Selectează elementele care urmează să fie afișate în lista de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Poți modifica ordinea elementelor tabelului sau ajusta lățimea coloanelor tabelului în vizualizarea listei pentru a optimiza cât mai bine mediul utilizatorului.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele elemente de tabel:

Box	Tabel articole
Patient	Nume pacient / ID pacient / Gen / Număr de cazuri / Data înregistrării / Data nașterii
Case Box	Status / Nume caz / Data nașterii / Informații formular / Ultima modificare / Data de scanare / Data comenzii / Nume Laborator

Order Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Data de scanare / Data comenzii / Nume Laborator / Data de livrare solicitată / Ultima modificare
In Box	Status / Nume caz / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Ultima modificare / Nume clinică
Work Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Informații formular / Ultima modificare / Data de livrare solicitată / Data scanării / Nume clinică / Data comenzii

Vezi tip

Schimbă tipul de vizualizare între Vizualizare galerie și Vizualizare listă în Case Box.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de tip de vizualizare:

Box	Opțiuni Vezi tip
Patient	Vizualizare listă
Case Box	Vizualizare listă / Vizualizare galerie
Order Box	Vizualizare listă
In Box	Vizualizare listă
Work Box	Vizualizare listă

Grupare

Selectează o opțiune de grupare pentru a clasifica și rearanja cazurile din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de grupare:

Box	Opțiuni de grupare
Case Box	Niciunul / Nume pacient / Data scanării / Data comenzii
Order Box	Nici unul / Data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată
In Box	Nici unul / Data comenzii / Data de livrare solicitată
Work Box	Nici unul / Data de livrare solicitată



Aviz

Opțiunile de grupare nu sunt disponibile în Patient, Case Talk și Trash Box.

Sortare

Selectează o opțiune de sortare pentru a modifica ordinea cazurilor din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

Box	Grupare	Opțiuni de sortare
Patient	-	Nume pacient / ID Pacient / Data nașterii / Data înregistrării / Număr de cazuri
	Niciunul	Nume pacient / Ultima modificare / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator

Case Box	Numele pacientului	Ultima modificare / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data comenzii / Nume laborator
	Data comenzii	Nume pacient / Ultima modificare / Data scanării / Nume Laborator
Order Box	Niciunul	Nume pacient / data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume Laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume laborator
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume Laborator
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator
In Box	Niciunul	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Numele clinicii
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data comenzii / Nume clinică
Work Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data ultimei modificări / Nume clinică




Aviz

Opțiunile de sortare nu sunt disponibile în Case Talk și Trash Box.

Filtrare și căutare

Filtrează după pacient

Filtrează și afișează cazurile în funcție de numele pacientului. Poți crea o listă filtrând doar pacienții la care trebuie să lucrezi.

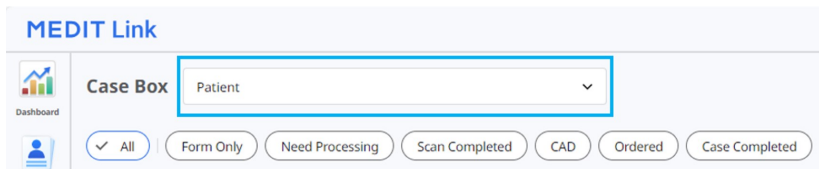


MEDIT Link

Case Box Patient

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Introdu un nume de pacient.

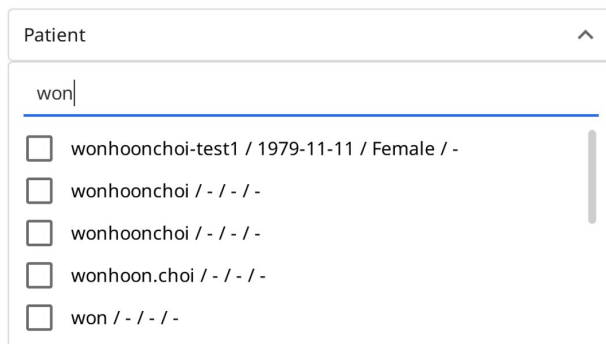


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selectează pacienții din rezultatele căutării de mai jos.

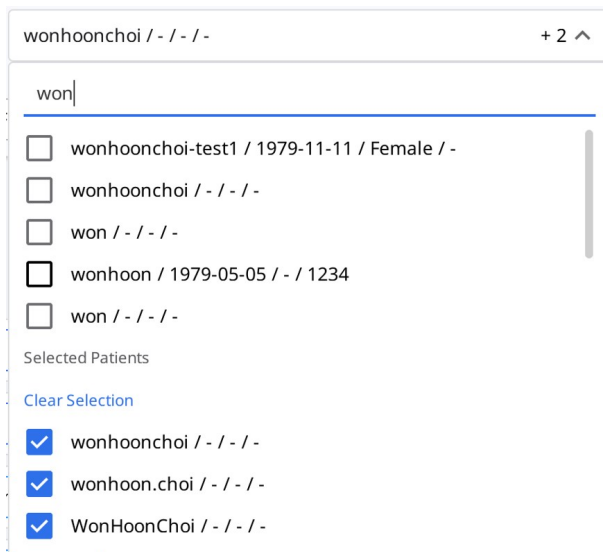

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplcase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrează după dată

Filtrează și afișează cazurile modificate ultima dată în intervalul de timp stabilit.

1. Clic pe filtrul de durată.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selectează durata din listă.

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate ultima dată în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează cazurile modificate ultima dată astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 de zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 de zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile modificate ultima dată în cursul acestei luni.
- Luna precedentă: Afișează cazurile modificate în ultima lună.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Capacități de căutare avansată

Utilizează capacitățile de căutare pentru a găsi rapid informațiile pe care le dorești.

All Search / Contains

Următoarele criterii de căutare sunt disponibile pentru fiecare casetă:

Patient	Tot, Nume pacient, ID Pacient
Case Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Informații formular, Nume laborator
Order Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator, ID comandă
In Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă
Work Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Informații formular, Nume clinică, ID comandă

Case Talk	Nume Case Talk (conține), Nume pacient (egal cu)
Trash Box (Clinică)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume laborator, Șterse de către
Trash Box (Laborator)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, Șters de către

Poți selecta Criterii de căutare și alege între logica Conține și Echivalent.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz

Crearea de cazuri

Creează un caz în Case Box (Clinică)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Introdu informații de bază, cum ar fi numele pacientului și numele cazului.
 - Dacă introduci un nume care nu se află pe lista de pacienți, se va adăuga un nou pacient.
 - Dacă introduci un nume care se află în lista de pacienți, îl poți selecta din listă.
 - Dacă înregistrezi un caz pentru un pacient existent, fă clic pe pictograma Lista de pacienți pentru a selecta un pacient existent.



- În caseta de dialog Lista de pacienți, poți înregistra un nou pacient sau poți edita informațiile unui pacient existent.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medi Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Clic pe „Înregistrează-te & Scanează” pentru a finaliza înregistrarea cazului și a trece la

scanare.

- Înregistrare: Vei fi redirecționat către pagina principală. Acest lucru este util atunci când se înregistrează mai multe cazuri.
- Înregistrează-te & Scanează: Treci la fila Formular pentru a înregistra informații despre formular pentru caz.

Crearea unui caz în Work Box (Laborator)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Introdu sau selectează numele clinicii.
3. Introdu numele pacientului și numele cazului. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Introdu data preconizată de livrare având în vedere data de finalizare a lucrărilor.
5. După înregistrarea cazului, vei fi redirecționat către pagina principală.

Editare cazuri

Editare cazuri în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Clic pe pictograma „Caută” pentru a schimba numele pacientului. Reține că acesta nu poate fi editat direct; în schimb, poți găsi un nume de pacient cu care dorești să îl înlocuiești pe cel actual și poți edita informațiile despre pacient din listă.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-08-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Bifează numele pacientului cu care vrei să îl înlocuiești pe cel actual.
4. Pentru a crea un nou pacient, apasă butonul „Pacient nou”.
5. Utilizează butonul „Editare” pentru a modifica informațiile înregistrate despre pacient.
6. Clic pe „Aplică” pentru a finaliza procesul.

Editează cazuri în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clic pe „Aplică” după ce ai terminat editarea.



Aviz

Nu poți edita informațiile despre cazurile primite prin intermediul comenzii în In Box.

Clonarea cazurilor

Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Vei fi întrebat ce fel de informații dorești să clonezi în noul caz.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Alege dacă vrei să reproduci doar informațiile din formular sau toate datele.
4. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.

Clonarea cazului în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Duplicarea tuturor datelor pentru a crea un nou caz.
3. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.


Ștergerea cazurilor

Șterge caz (clinică și laborator)

1. Clic pe pictograma „Șterge”.



2. Clic pe „OK” pentru a șterge cazul.

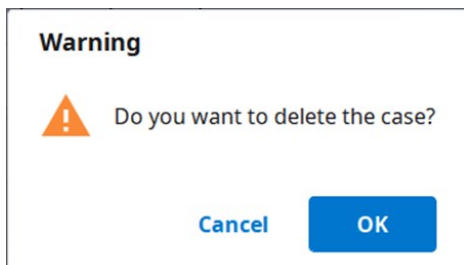

3. Cazurile șterse sunt mutate în coșul de gunoi și pot fi recuperate dacă este necesar.

Informații formular

Poți introduce informațiile din formular în funcție de programul conectat și de tipul de tratament.

Informațiile pe care le introduci vor fi folosite ca informații de bază pentru a lucra cu programe de scanare sau CAD și pentru a comanda.

Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box

Introdu în fila Formular

1. Selectează dacă dorești să introduci informații despre tratament pe dinți sau pe arcadă.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
3. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Introdu în fila CAD

1. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
2. Selectează numărul dintelui/arcada/numărul matriței.
3. Definește setările pentru opțiunile detaliate și operațiunile CAD.
4. Clic pe „OK” pentru a salva setările.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
5. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea

Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box

Introdu în fila Formular

1. Selectează programul de scanare pe care vrei să-l utilizezi.
2. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
3. Metodele pot fi diferite în funcție de programul de scanare selectat.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dinți	O	O
Arcadă	O	O
Matriță multiplă flexibilă	X	O
Matriță multiplă	X	O

4. Selectează numere de dinți, arcade sau matrițe pentru procesul de scanare.
5. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.


6. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Introdu în fila CAD

1. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
2. Selectează numărul dintelui/arcada/numărul matriței.
3. Definește setările pentru opțiunile detaliate și operațiunile CAD.
4. Clic pe „OK” pentru a salva setările.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.
5. Clic „Salvează”.

Conectarea dinților în punte

Poți conecta mai mulți dinți într-o punte atunci când același material este aplicat pe mai mulți dinți adiacenți. Clic pe pictograma punte de lângă dinții selectați pentru a-i conecta sau deconecta.

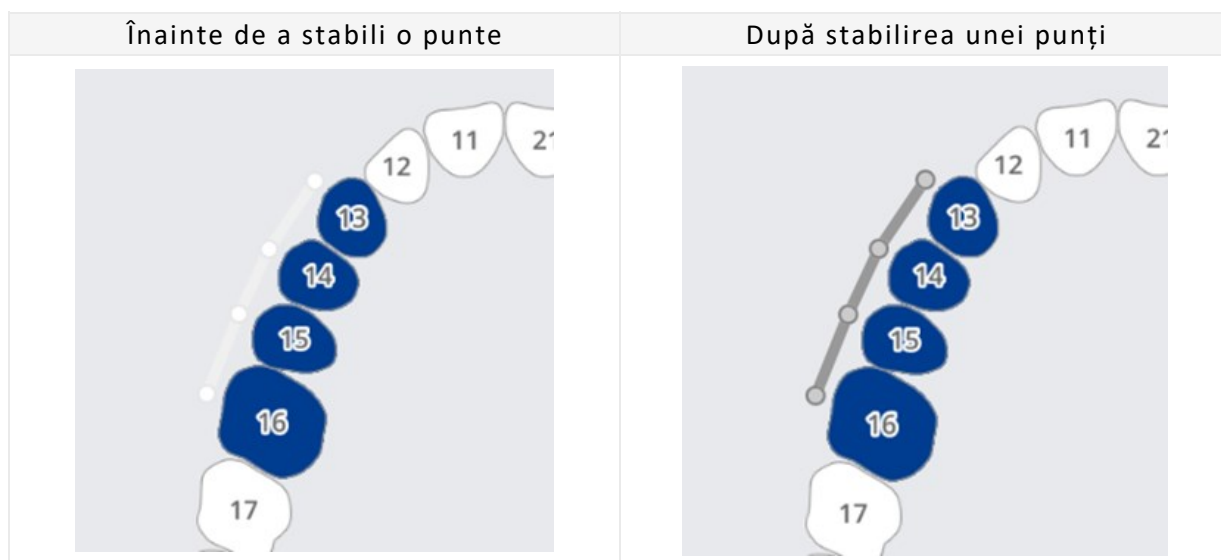

Setarea opțiunilor de scanare

În funcție de programul cu care lucrezi, sunt oferite diferite opțiuni de scanare.

Opțiunile de scanare selectate sunt transmise fiecărui program de scanare.

Medit Scan for Labs

Opțiuni generale

	Dinți adiacenți	Marchează dinții preparați și adiacenți și trimite informația către programul de scanat.
	Antagonist	Marchează automat antagonistul și oferă informațiile programului de scanare.
	Articulator	Afișează opțiunile de selectare ale articulatorului în programul de scanare.
	Marcator de mișcare	Permite utilizarea strategiei de scanare „Mișcarea fălcilor” în programul de scanare.

Opțiuni în funcție de dinți

	Corp de scanare	Permite stabilirea unei strategii de scanare a corpurilor de scanare în programul de scanare.
	Scanare pre-operatorie	Permite stabilirea unei strategii de scanare a unui model pre-operator în programul de scanare.
	Scanare ceruită	Permite setarea unei strategii de scanare a cerii în programul de scanare.

Adăugare la favorite

Poți selecta rapid un produs înregistrându-l ca favorit.

Lista de favorite înregistrate este gestionată ca un șablon și poate fi partajată prin intermediul funcțiilor de export și import.

Adaugă la favorite

1. Selectează numărul dintelui.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - o Tip - Metodă - Material - Nuanțele pot fi înregistrate ca favorite chiar dacă nu sunt selectate toate.
3. Clic pe pictograma „Stea”.

4. O combinație a parametrilor selectați, cu excepția numărului de dinți, se află pe lista de căutare preferată.

Gestionează șabloanele favorite

Poți înregistra, gestiona și partaja diferite tipuri de șabloane.

Adaugă	Adaugă un șablon nou.
Redenumeste	Redenumeste șablonul curent.
Șterge	Șterge șablonul curent.
Exportă	Exportă șablonul curent într-un fișier.
Importă	Importă un fișier șablon.

Lucrează la scanare/CAD

Proces de scanare

Pe baza informațiilor introduse, continuă cu scanarea.

1. Introdu/salvează informațiile despre tratament și selectează opțiunile de scanare necesare.
2. Clic pe butonul „Scanează” din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Proces CAD

Medit Link este integrat cu exocad.

CAD	Înregistrarea informațiilor privind tratamentul	Confirmarea informațiilor privind tratamentul	Execuție directă CAD	Importul rezultatelor CAD înapoi în Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. În Setări > Setează programul conectat, poți conecta programul CAD ales din listă.
2. Introdu/salvează informații despre sarcini și opțiuni de proiectare în fila CAD.
3. Clic pe „CAD” în colțul din dreapta sus al ferestrei.
4. Programul CAD asociat este rulat, iar datele sunt trimise automat.
5. Salvează rezultatele după efectuarea CAD.



Aviz

Medit Link pentru Mac nu acceptă funcția de conectare cu CAD.

Obține fișierele de rezultate

Exportă fișierele de rezultate ale scanării

În plus față de partajarea rezultatelor cu partenerii prin intermediul comenzilor, Medit Link îți permite să stochezi fișierele de rezultate în formatul de fișier dorit, utilizând funcția de export.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

Exportă fișiere în	Specifică calea în care vrei să stochezi fișierele rezultate.
Numele folder-ului	Sistemul creează un dosar nou și stochează toate fișierele rezultate în el. Numele implicit al dosarului este stabilit prin regula de denumire. Dar poți schimba direct numele dosarului. Poți defini regula de denumire pe Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele dosarului.
Nume fișier	Stabilește numele de fișier pentru rezultat. Regula de denumire stabilește numele implicit al fișierului. Dar poți schimba direct numele fișierului. Poți defini regula de denumire prin Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele fișierului
Tip CAD	Selectează programul CAD care urmează să fie utilizat pentru programul de proiectare. Medit Link va ajusta fișierele pe baza acestei selecții, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Format rețea	Specifică formatul fișierului de plasă.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.


Comprimă fișiere	Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier.
Combină rețelele individuale	Combină rezultatul maxilarului sau mandibulei cu cel al dintelui individual. Util atunci când nu este posibilă importarea mai multor fișiere într-un program.
Exportă toate relațiile ocluzale	Atunci când sunt generate mai multe rezultate ocluzale din aplicația de scanare, poți exporta toate rezultatele ocluzale deodată.
Salvează informațiile cazului ca PDF	Salvează informațiile despre caz în format pdf cu rezultatul.

Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor


Poți exporta fișiere de rezultate ale unui caz sau ale mai multor cazuri simultan cu ajutorul opțiunii „Exportă” de deasupra listei de cazuri din Case Box și In Box.

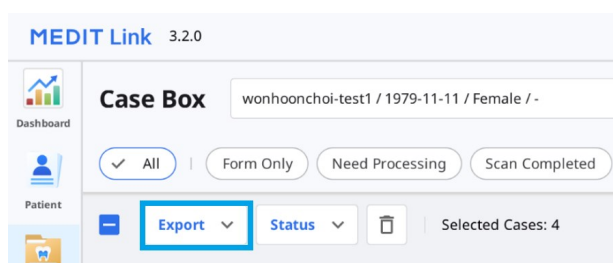

1. Mergi la In Box sau Work Box.
2. Selectează din listă toate cazurile în care vrei să exporti fișiere de rezultate.

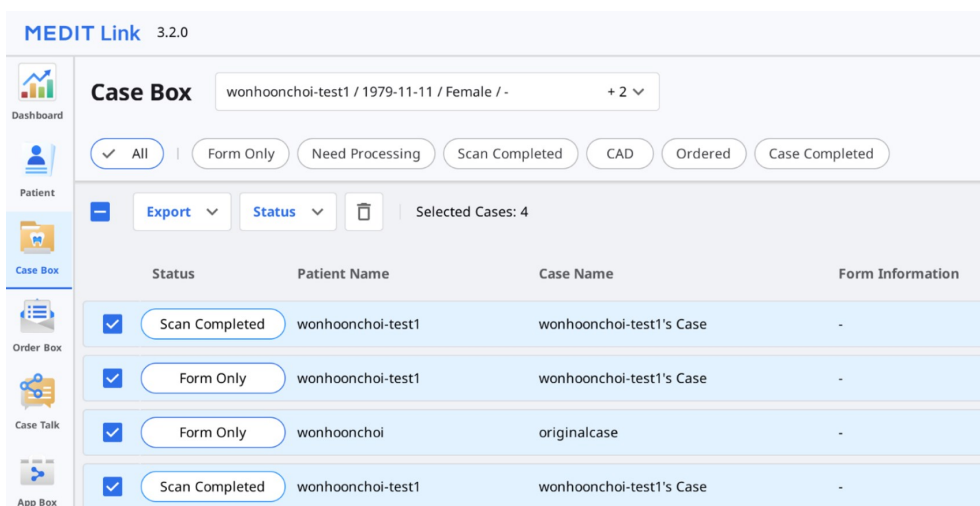

3. Clic „Exportă” își selectează „Fișiere rezultat”.

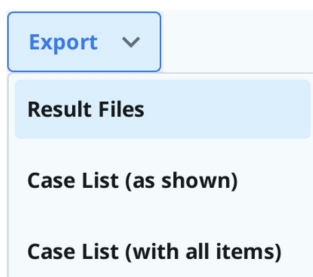

4. Setează dosarul de destinație, tipul de fișier, formatul de rețea și formatul de imagine și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export



Câmpurile „Nume dosar” și „Nume fișier” nu sunt editabile atunci când exporti fișiere pentru mai multe cazuri.

Numele dosarului și numele fișierului sunt create automat în conformitate cu regulile pe care le-ai setat pentru opțiunile „Regulă pentru Nume dosar” și „Regulă pentru Nume fișier” din Setări > Opțiuni de export.

5. Clic „Exportă”.
6. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier

Poți exporta fișierele cu rezultatele scanării pentru un caz cu ajutorul pictogramei „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.

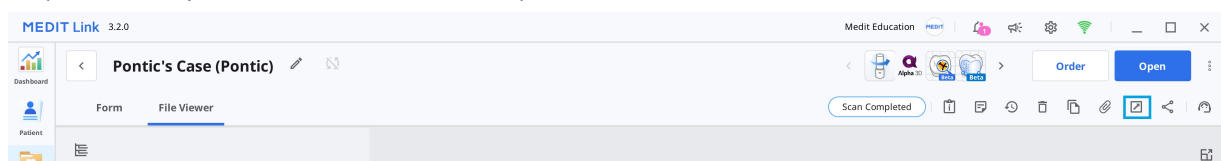

1. Mergi la In Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.



4. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul

rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

The screenshot shows the 'Export files in case' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'File List' tab is also visible. The 'Export Files To' field is set to 'C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/'. The 'Folder Name' and 'File Name' fields both contain 'Multi Occlusion - Scan - Before Scanning'. The 'CAD Type' dropdown is set to 'Maestro'. Under 'Mesh Format', the 'Convert mesh files to the below formats' section has 'PLY' selected, and the 'Do not convert the attached files' checkbox is checked. The 'Image Format' section has 'Convert images to the below format' unchecked, and 'PNG' is selected among the image formats. At the bottom, there are checkboxes for 'Compress Files', 'Combine Individual Mesh', 'Export All Occlusal Relationship', and 'Save Case Information as PDF' (with a 'Preview' link). 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.

5. În fila „Lista de fișiere” poți selecta fișierele necesare pentru caz, deselectarea celor inutile.

The screenshot shows the 'Export Files in This Case' dialog box with the 'File List' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'File List' contains a tree view of files and folders. The 'Maxilla' folder is expanded, showing 'Base' and 'Mandible' sub-items, both of which are checked. The 'Mandible' folder is also expanded, showing 'Base' and 'Occlusion' sub-items, both of which are checked. The 'Occlusion' folder is expanded, showing 'First Occlusion' and 'Second Occlusion' sub-items, both of which are checked. The 'Dynamic Occlusion' folder is expanded, showing 'Free' sub-item, which is checked. The 'Face Scan Data' folder is expanded, showing 'Face Scan Data' sub-item, which is checked. 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.


6. Clic „Exportă”.

7. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

The screenshot shows a 'Question' dialog box with a question mark icon. The text reads: 'Exporting successfully completed. Do you want to open the folder containing the exported file?'. There are 'No' and 'Yes' buttons at the bottom right.

Exportă rezultate fișiere din Arborele de date


Poți exporta un fișier sau fișiere dintr-un anumit grup de date din meniul extins din vizualizare fișier.

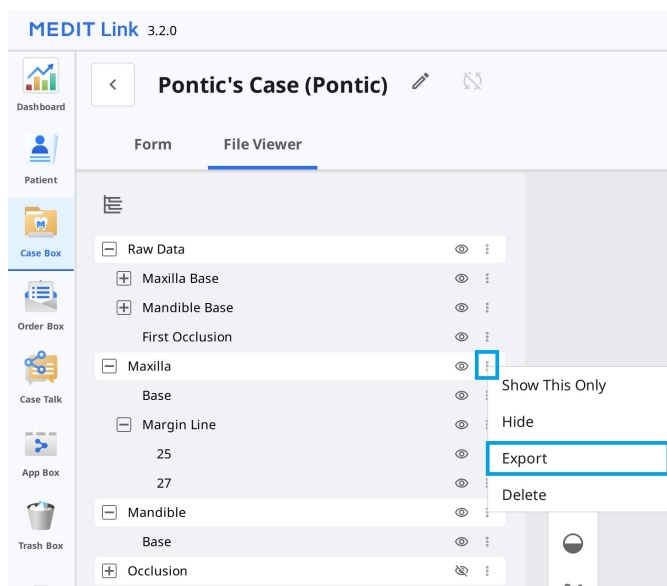

1. Mergi la In Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma cu trei puncte de lângă grupul de date sau o entitate din arborele de date din fila Vizualizare fișier.

...

4. După clic „Exportă”.

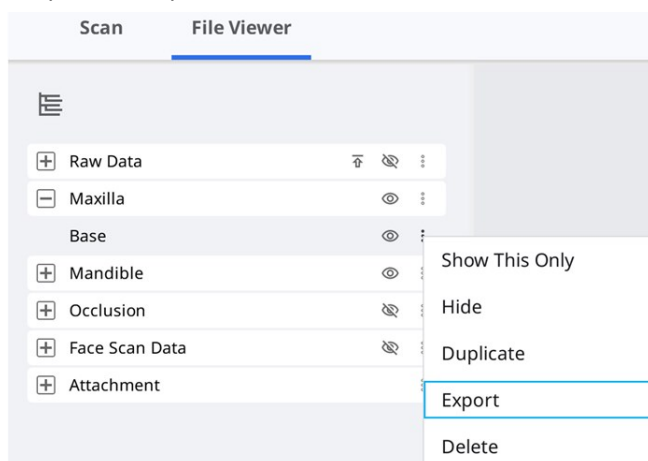

5. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. Poți vedea că numai fișierele pe care le-ai ales în arborele de date sunt selectate în Lista de fișiere.

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. Clic „Exportă”.
8. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Exportă lista de cazuri ca CSV


Medit Link oferă funcția de a exporta lista de cazuri în format CSV.

Poți exporta lista de cazuri cu informații de bază și poți gestiona cazurile cu ușurință.

1. Mergi la In Box sau Work Box.
2. Selectează cazurile pe care se dorește să le exporti.

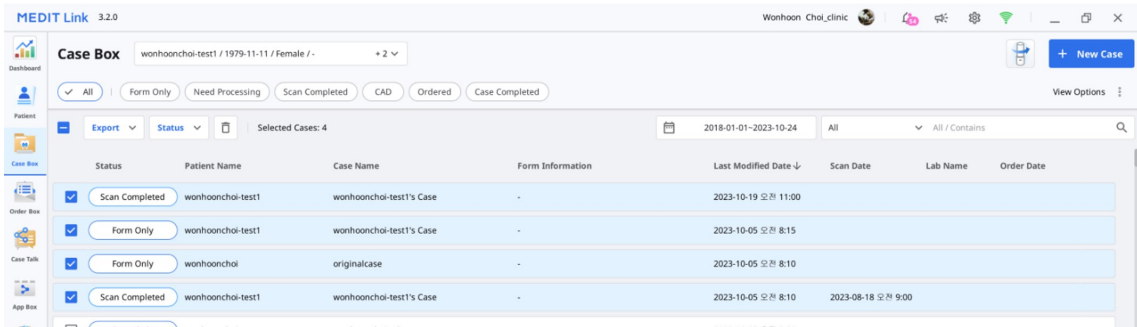

3. Clic „Exportă” și selectează „Lista cazurilor (după cum se afișează)” sau „Lista cazurilor (cu toate articolele)”.

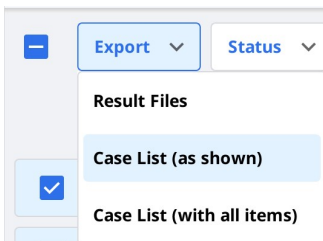

Aviz

Lista cazurilor (după cum se afișează): Exportă lista de cazuri cu elementele afișate în prezent pe ecran. Mergi la Vizualizează opțiuni > Tabel articole pentru a afișa sau ascunde elementele după cum vrei.

Lista cazurilor (cu toate articolele): Exportați lista de cazuri cu toate elementele, inclusiv Status, Nume caz, Data nașterii, Informații formular, Ultima modificare, Data scanării, Data comenzii și Nume Laborator.

4. Definește calea și numele fișierului, apoi salvează lista.
5. Lista de cazuri este salvată sub forma unui fișier CSV.

Exportă Linia marginală


Medit Scan for Clinics oferă o funcție de creare a liniei marginale, iar Medit Link poate transfera linia marginală în programul CAD.

Exportă linia marginală ca o culoare

În general, Medit Link convertește linia marginală în culoare și exportă rezultatul cu maxilarul sau mandibula împreună. Poți crea linia marginală în cad-ul lor făcând referire la informațiile de culoare.

Exemplu:

Maxilar

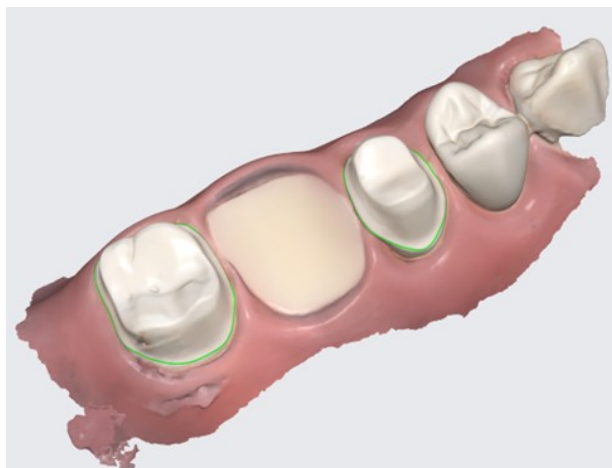

Rezultat cu liniile marginale ca informație de culoare



Această funcție este disponibilă pentru formatele care includ informații despre culori, cum ar fi meditMesh, OBJ și PLY. Linia marginală nu se convertește în STL.




Tipul CAD > 3shape nu acceptă această caracteristică.

Exportă linia marginală ca fișier

În cazul Exocad, Medit Link exportă linia marginală în „~margin.xyz”, care poate fi importată direct în exocad.

Poți utiliza acest fișier în exocad fără lucrări suplimentare.

Exemplu:

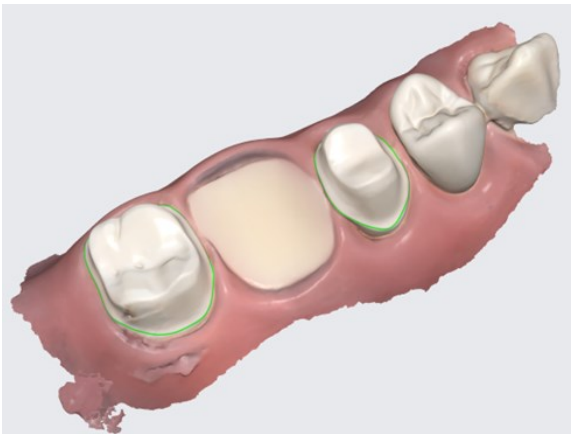Maxilar	Linie marginală
 Rezultat cu liniile marginale ca informație de culoare	 Linia marginală exportată ca fișiere individuale

Descarcă fișiere de pe Medit Link Web

Medit Link oferă o funcție de descărcare.

Dacă dorești să obții fișierele de rezultate fără a instala aplicația Medit Link, poți descărca fișierele de pe serviciul web Medit Link.

Aviz


Datele trebuie să fie încărcate pe Medit Cloud pentru a descărca fișierele de pe web.

Funcția de descărcare este disponibilă în următorul meniu al serviciului web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Poți găsi butonul „Descarcă” în dreapta sus.

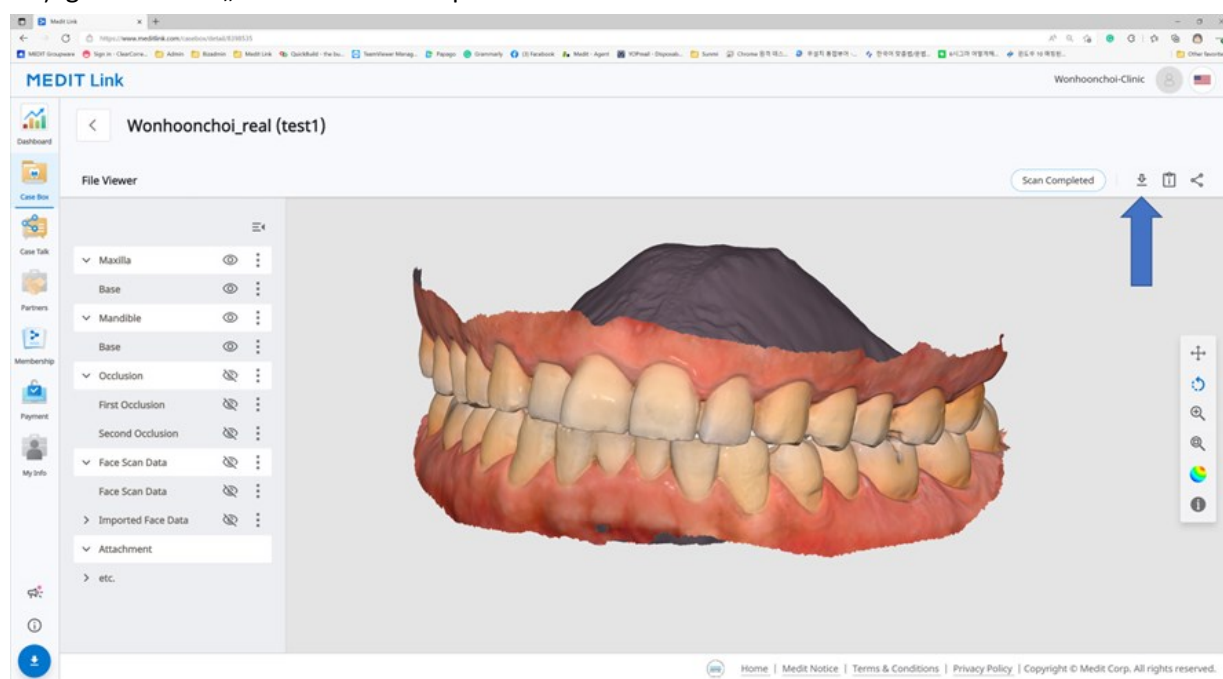


Web Viewer

Atunci când partajezi un caz utilizând Case Talk, poți seta dacă permiți sau nu descărcarea.

Dacă bifezi „Acordă permisiunea de descărcare” și partajezi cazul, toți utilizatorii care se conectează la link-ul partajat pot descărca fișierele.

În Web Viewer, poți găsi pictograma „Descarcă” în dreapta sus.

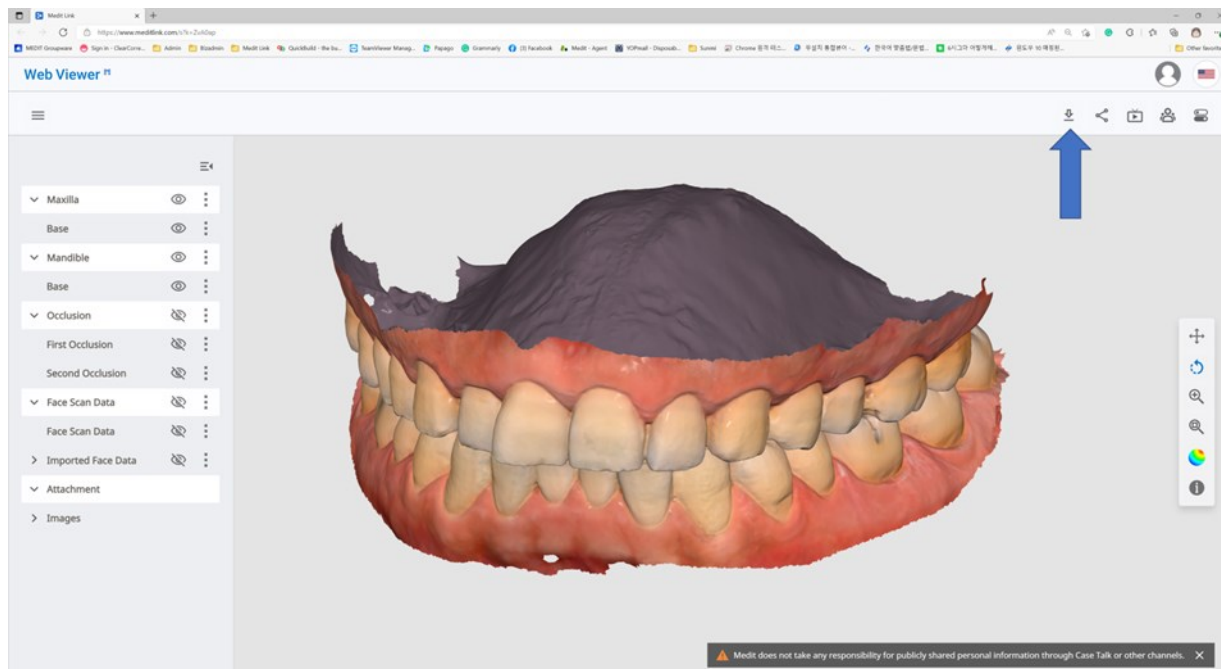

1. Clic „Descarcă”.



2. Selectează formatul de rețea din fereastra de dialog pentru descărcare.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. După clic „OK”.

Comandă/gestionează comenzi

Poți comanda cu ușurință un caz cu date obținute de la programele conectate și atașate de utilizator.

Comandarea cazurilor

Poți plasa o comandă pentru partenerii tăi în Case Box.

1. Clic pe butonul „Comandă”.
2. Verifică informațiile necesare pentru comanda ta.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:

- Order** (Title)
- Tabs: **General** (selected), Order List, File List
- Partner**: WonhoonChoi_Lab_Stage (dropdown menu)
- Partner Details** (Card):
 - Icon: A person at a computer.
 - WonhoonChoi_Lab_Stage**
 - Seoul, KR
 - [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 - 01026088546
- Case Name**: mandibular movement - Clone - Clone
- Patient Name**: Test Occlusion
- ☒ **Share patient information**
- Requested Delivery Date**: 2023-04-13 (calendar icon)
- Delivery Time**: 8:15 (clock icon, range from AM 8:00 to PM 8:00)
- Memo**: (empty text area)
- Tags**: (empty text area with instruction: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar.")
- You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
- ☒ **Include all occlusion relationships in the order**
- ☒ **Include Tags In The Order**
- Buttons**: Cancel, OK

3. Selectează un partener.
4. Verifică informațiile despre produs din fila Lista de comenzi.
 - Poți decide dacă vrei să împărtășești numele pacientului.
5. Verifică fișierele de comandat din fila Lista de fișiere.
6. Introdu data de livrare dorită.
 - Valoarea implicită este setată la 7 zile de la data comenzii.
7. Poți adăuga o notă și etichete partenerului tău pentru a sublinia detalii specifice.
8. Atunci când rezultatele ocluzale multiple generate de aplicația de scanare, poți trimite toate rezultatele ocluzale deodată, bifând „Comandă toate rezultatele ocluzale”.
9. Continuă cu comanda.

Confirmă comanda (In Box)

- Accept the order upon receiving it.
- Comenzile acceptate vor fi transmise către Work Box.

Anulează comanda (Order Box)

- Poți anula o comandă înainte ca partenerul tău să o accepte.
- Cazurile anulate pot fi comandate din nou.

Refuză comanda (In Box)

- Poți respinge o comandă primită.
- Cazurile respinse pot fi comandate din nou.

Verificarea cazurilor comandate

Poți verifica detaliile cazului pe care l-ai comandat de la Order Box în contul clinic. Poți verifica, de asemenea, cazul pe care l-ai primit din In Box în contul de laborator.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade


Informații comandă	Informațiile care pot fi incluse în comandă sunt următoarele: ID-ul comenzii/numele pacientului/numele contului/data scanării/data comenzii/data livrării/data scadenței livrării/memo. Poți verifica detaliile produsului comandat și informațiile privind livrarea.
Listă comenzi	Lista de comenzi afișează detaliile produsului comandat.
Expediere	Introdu/verifică informațiile de expediere.

Introducerea informațiilor despre expediere (In Box)

Introdu informațiile de expediere a cazului finalizat și începe expedierea.

1. Clic pe fila Expediere.

2. Introdu informațiile despre expediere și clic pe „Înregistrează”.

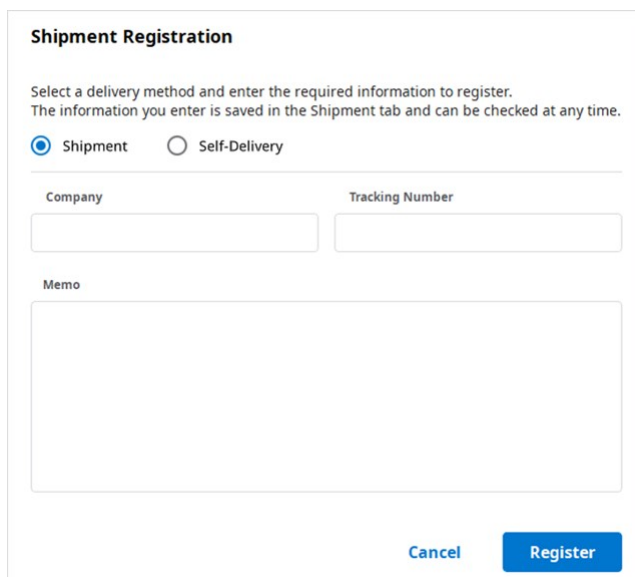

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)


3. Informațiile introduse sunt trimise partenerului tău.

Gestionarea datei de livrare

Poți stabili data de livrare preconizată atunci când plasezi o comandă, iar această informație va fi transmisă partenerului tău.

Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)

- Atunci când comanzi de la Case Box, poți introduce data de livrare dorită.

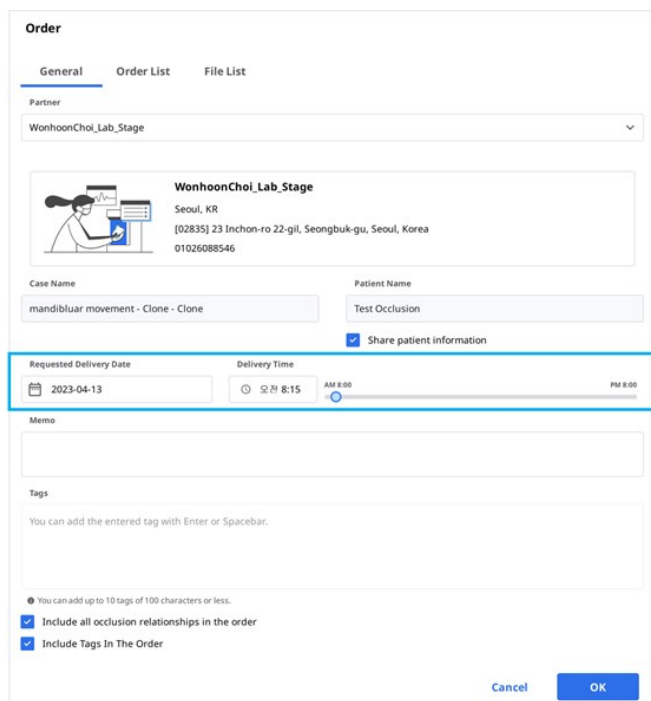

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

[Cancel](#) [OK](#)

- Valoarea implicită este de 7 zile de la data comenzii.
- Introdu data/ora la care dorești să primești produsele și continuă cu comanda.
- Poți seta cu ușurință ora cu ajutorul cursorului.

Setarea datei preconizate de livrare (cont clinică)

- Poți introduce data de livrare preconizată pentru cazul comandat de la In Box.

1. Verifică data de livrare solicitată împreună cu partenerul și reprogramează cu ajutorul butonului „Editează”.



2. Introdu data de livrare preconizată, luând în considerare ziua lucrătoare efectivă. Dacă este necesar, poți lăsa și un comentariu.
3. Clic „Aplică”.

4. Data de livrare preconizată și nota vor fi transmise împreună cu comanda.
 - o Poți verifica data și memo-urile în Order Box.
 - o Poți modifica data de livrare preconizată, iar modificările vor fi transmise partenerului tău.
5. Poți verifica istoricul cazului folosind butonul „Istoric”.



Finalizarea cazului

Complet (Work Box/In Box)


După îndeplinirea tuturor sarcinilor, clic pe „Gata” pentru a finaliza cazul.

Completează un caz din detaliile cazului

Poți găsi pictograma cu trei puncte în dreapta de la butonul „Deschide” sau „Scanează din nou”.



Finalizează lucrarea făcând clic pe pictogramă și selectând „Done”.

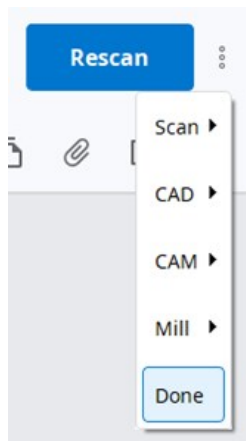

Completează cazurile multiple din lista de cazuri

1. Mergi la Work Box.
2. Selectează toate cazurile de completat.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export ▾ Status ▾ Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
☒ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
☒ Form Only	test's Case	test	-
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
☒ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Clic „Status” și selectează „Gata”.

Complet (Case Box/Order Box)

După ce cazul este finalizat în laborator, clinica trebuie să confirme cazul pentru a finaliza întregul proces de comandă.

Clinica poate găsi butonul „Confirmă livrarea” în Order Box dacă laboratorul își finalizează activitatea.


Clic pe aceasta, întregul proces de comandă se finalizează, iar statutul cazului se va schimba în „Caz finalizat”.

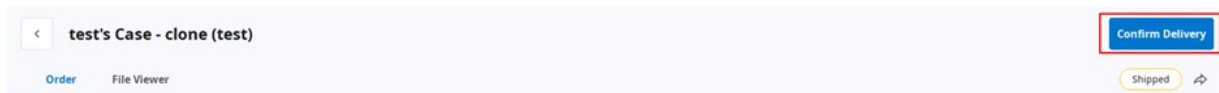

Termină un caz necomandat în Case Box

Pentru cazurile care nu sunt comandate la laborator, poți completa aceste cazuri din Case Box.

1. Mergi la Case Box.
2. Selectează cazul pe care dorești să îl completezi.

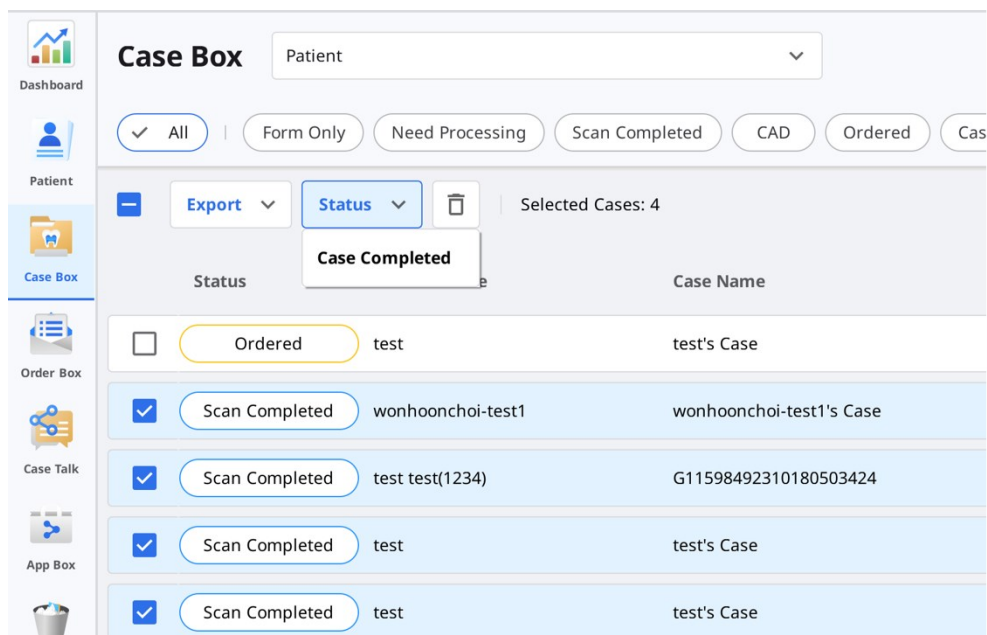


3. Clic „Status” și selectează „Case Completed”.

Comunică folosind etichete

Poți să adaugi informații suplimentare pentru cazul tău folosind etichete și să le trimiți partenerilor tăi.

Adaugă etichete la crearea unui caz nou

Poți introduce etichete atunci când creezi un caz nou sau când editezi informații despre caz.

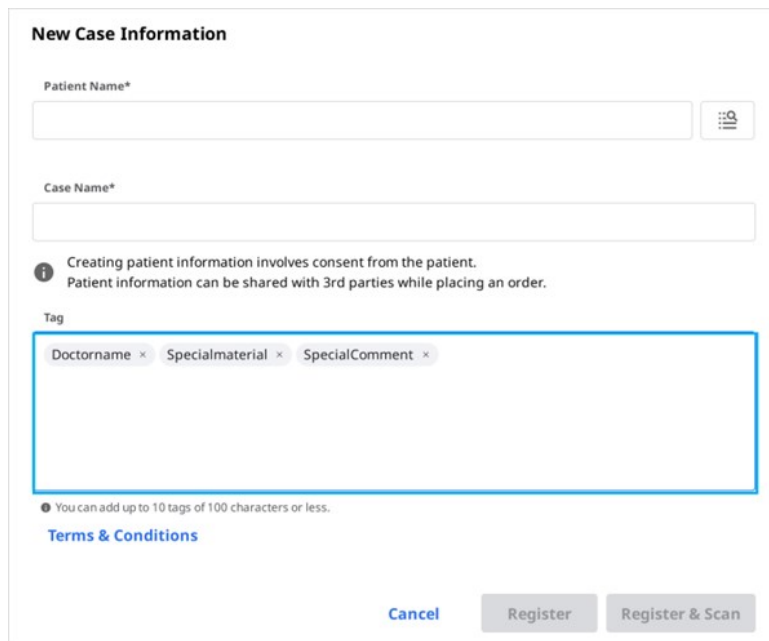

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Poți căuta și selecta cu ușurință etichete pe care le-ai mai folosit.

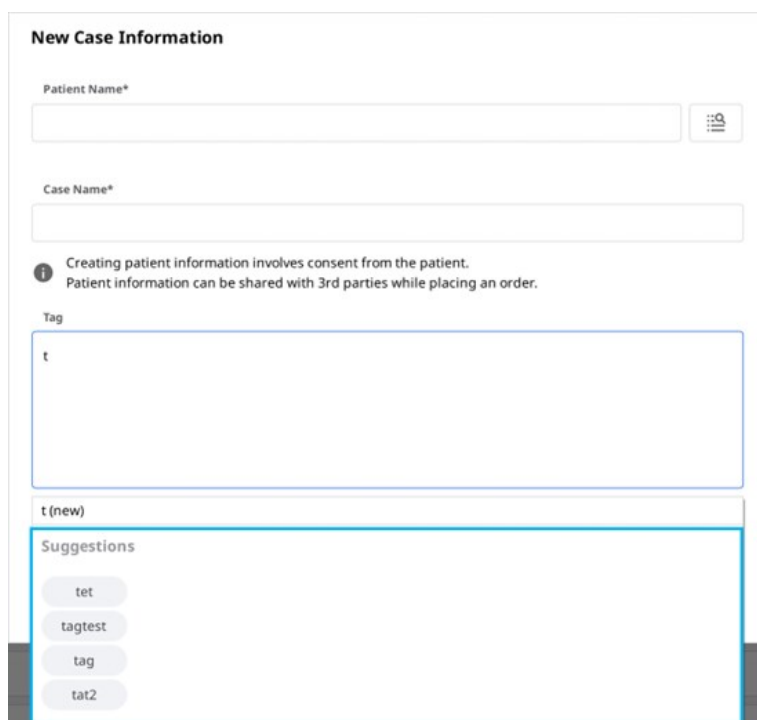

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Adaugă etichete la comandă

Poți verifica și edita etichetele în caseta de dialog Comandă în timpul comenzii.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오후 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Verifică etichetele de pe Detaliile cazului

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

•Z

