

USER GUIDE

Medit Link

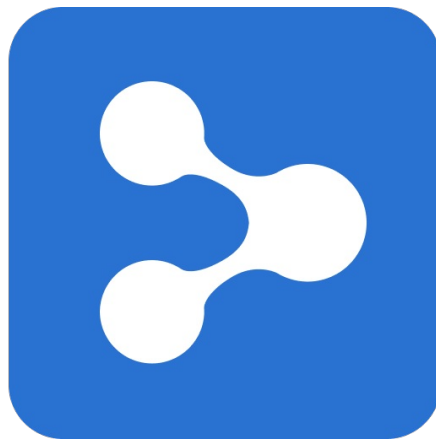


Table of Contents

Medit Link

Úvod	6
Medit Link	6
Přehled služeb	6
Služba Cloud	7
Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému	7

Medit Link > Instalace

Systémové požadavky	8
Systémové požadavky pro Windows	8
Systémové požadavky pro macOS	8
Systémové požadavky pro webovou službu	8
Doporučené pro prohlížeče	8
Minimum pro mobilní zařízení	8
Instalace na Windows	9
Instalace na macOS	11
Medit Link je nainstalován jako balíček s Medit Scan for Clinics.	11

Medit Link > Začínáme

Registrovat se a Přihlásit se	15
Medit Link Webstránka	15
Registrovat se	15
Přihlašovací a uvítací stránka	17

Medit Link > Medit Link Web

Náhled	19
Dashboard	20
Náhled Dashboardu	20
Medit Insights	20
Přihlásit se na odběr Medit Insights	21
Odhlásit se z odběru Medit Insights	22
Case Box/Work Box	23
Filtrování případu	23
Filtrovat podle stavu	23
Filtrovat podle trvání	23
Filtrovat podle vyhledávání	24
Detaily případu	24
Order Box/In Box	26
Detaily objednávky	26
Záznamy v Order Box/In Box	26
Case Talk	27
Vytvoření Case Talk	27
Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení	28
Detaily Case Talk	30
Web Viewer	30
Anotace	31
Komentáře	32
Sdílení obrazovky v reálném čase	33
Datový strom	33
Ovládání datového stromu	33
3D ovládání modelu	34

Partneři	36
Vyhledávání Partnerů	36
Můj seznam partnerů	36
Pozvání partnera	37
Členství	38
Členství	38
Můj plán	38
Cloud úložiště	39
Přihlásit se k odběru	40
Odhlásit se z odběru	42
Fakturační údaje	43
Jak přidat platební metodu	43
Jak změnit platební metodu	45
Uplatnění	47
Registrovat kód kupónu	47
Aktivovat kód kupónu	48
Platba	49
Detaily platby (účty Kliniky & Laboratoře)	49
Informace o účtu platby (pouze účet Laboratoře)	49
Moje info	50
Můj účet	50
Moje organizace (pouze účet Administrátora)	50
Můj skener	51
Můj ceník (pouze účet Administrátora laboratoře)	51
Jiné Menu	52
Oznámení & Aktualizace	52
Informace Medit	52
Stáhnout aplikaci Medit Link	52

Medit Link > Aplikace Medit Link

Náhled	54
Náhled Boxu	54
Lišta záhlaví	56
Upozornění	56
Správce synchronizace případů	57
Nahrát	58
Stáhnout	58
Stav sítě	59
Menu	60
Dashborad	60
Case Box/Work Box	60
Záložky v Case Box/Work Box	61
Funkce v Case Box/Work Box	61
Order Box/In Box	62
Záložky v Order Box/In Box	63
Case Talk	63
App Box	63
Trash Box	64
Nastavení	64
Správa pacientů	65
Přidat nového pacienta	65
Odstranit pacienta	65
Spojit pacienty	66
Oznámení & Aktualizace	67
Přejít na webovou stránku Medit Link	67
Informace Medit	67

Nastavení	68
Obecné	68
Správce úložiště	69
Nastavit období	69
Místní úložiště	69
Cloud úložiště	70
Nastavit propojený program	70
Možnosti exportu	70
Nástroj pro převod případů	72
Jak používat Nástroj pro převod případů	72
Proxy možnosti	74
O programu	74
Uživatelská příručka	75
Prohlížeč souboru	76
Datový strom	76
Nástroje pro ovládání modelu	76
3D ovládání modelu	76
Ovládání 2D obrázků	77
Funkční nástroje	78
Zachycení obrázku a Poznámka	78
Ortho zachycení	78
Vyplnit mezery	79
Ořezávání	79
Optimalizovat zarovnání okluze	82
Pohyb mandibuly	83
Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů	84
Jak spravovat více výsledků	84
Možnosti zobrazení	86
Filtry stavu	86
Položky tabulky	87
Typ zobrazení	88
Zobrazení galerie	89
Zobrazení do seznamu	90
Seskupení	90
Seřazení	91
Filtrování a vyhledávání	93
Filtrovat podle data	93
Rozšířené možnosti vyhledávání	93

Medit Link > Pracovní postup

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ	95
Vytváření případů	95
Vytvořte případy v Case Box (Klinika)	95
Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)	96
Úprava případů	96
Upravit případy v Case Box (Klinika)	96
Upravit případy v Work Box (Laboratoř)	97
Klonování případů	98
Klonování případu v Case Box (Klinika)	98
Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)	98
Odstranění případu	98
Smazat případ (Klinika a Laboratoř)	98
Informace formy	100
Registrace informací formy v Case Box	100
Zadejte je na záložce Formy	100
Zadejte je na záložce CAD	100

Registrace informací formy v Work Box	100
Zadejte je na záložce formy	100
Zadejte je na záložce CAD	101
Připojení zubů do můstku	101
Nastavení možností skenování	101
Obecné možnosti	101
Možnosti podle zubů	101
Přidání k Oblíbeným	102
Přidat do Oblíbených	102
Spravujte oblíbené šablony	102
Práce na skenování/CAD	103
Proces skenování	103
Proces CAD	103
Získání souborů s výsledky	104
Export Scan Result Files	104
Exportovat vybrané soubory	105
Export hranice preparace	106
Exportovat hranici preparace jako barvu	106
Exportovat hranici preparace jako soubor	107
Exportovat Seznam případů jako CSV	108
Jak exportovat seznam případů	108
Stáhnout soubory z webstránky Medit Link	109
Case Box/Work Box	109
Web Viewer	109
Jak stáhnout	110
Objednávka/Správa objednávek	112
Snadno si můžete objednat případ s daty získanými z připojených programů a připojenými daty uživatelem.	112
Objednávání případů	112
Potvrdit objednávku (In Box)	113
Zrušit objednávku (Order Box)	113
Odmítnout objednávku (In Box)	113
Kontrola objednaných případů	113
Zadání informací o doručení (In Box)	114
Správa data doručení	114
Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)	114
Dokončování případů	116
Dokončit (Work Box/In Box)	116
Dokončete případ z detailu případu	116
Dokončit více případů ze seznamu případů	117
Dokončit (Case Box/Order Box)	117
Dokončete neobjednaný případ v Case Box	117
Komunikujte pomocí značek	119
Přidejte značky při vytváření nového případu	119
Přidejte značky při objednávce	120
Zkontrolujte značky na detailech případu	120

Úvod

Medit Link

Medit Link je nástroj pro spolupráci navržený tak, aby usnadnil komunikaci mezi klinikami a laboratořemi a zajistil tak optimalizovaný pracovní postup pro každou stranu.

Nabízí diferencované funkce podle typu a oprávnění každého účtu. Program poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu pracovního postupu - od skenování orálními a modelovými skenery, objednávání případu až po navrhování a výrobu protéz.

Medit Link se skládá z webové služby a počítačové aplikace.

Přehled služeb

		Web	Aplikace
		• Zaregistrujte se a spravujte účet • Hledat • Vyhledávejte a spravujte partnery • Sdílejte případy prostřednictvím Web Viewer s odkazem ke sdílení • Přístup k případům vytvořeným z aplikace • Spravujte objednávky	• Vložte informace formy • Skenujte • Zadávejte/přijímejte objednávky a uskutečňujte platby • Propojte s CAD • Spravujte pacienty
Klinika	Admin	Vyhledávejte a spravujte partnery a svou organizaci, platební údaje a sdílejte případy. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partneři - Členství< 0>- Platba - Moje info	Zadávejte informace formy, skenujte, propojte s CAD, zadávejte objednávky, provádějte platby a spravujte pacienty. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Správa pacientů
	Člen	- Case Box - Case Talk - Moje info	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Laboratoř	Admin	Vyhledávejte a spravujte partnery a svou organizaci, platební údaje a sdílejte případy. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partneři - Členství< 0>- Platba - Moje info	Zadejte informace formy, skenujte, propojte s CAD a přijímejte/spravujte objednávky. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

	Člen	- Work Box - Case Talk - Moje info	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
--	------	--	---

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Platba

Služba Cloud

Medit Link podporuje automatické nahrávání/stahování databází a souborů prostřednictvím AWS (Amazon Web Services).

Data uložena v cloudu jsou automaticky synchronizována s počítači mnoha uživatelů v organizaci s tím, že může existovat přístup k těm samým datům z jednoho počítače kdykoliv. Cloudové zálohování a obnova uchová všechna vaše data v bezpečí. Uchová vaše data v bezpečí i v případě ztráty dat v důsledku náhlého selhání počítače.

Cloudová služba umožňuje partnerským zubařům a laboratořím rychle sdílet data, aniž by se museli zatěžovat e-mailem nebo manuálním přenosem skenů. Všechna data - včetně informací o pacientech - jsou bezpečně šifrována, ukládána a přenášena. Medit dodržuje lékařské zákony a předpisy, jako je HIPAA a GDPR.

Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému

Medit Link nabízí vlastní objednávkový a platební systém.

- Medit Link vám umožňuje vytvářet smlouvy mezi zubními lékaři a zubními laboratořemi, ale také rychle a snadno sdílet data.
- Můžete kontrolovat a spravovat stav objednávky.

Systém, využívající kreditní karty, pracuje s moduly online platebních platforem, jako jsou Stripe (www.stripe.com) a I'mPort (<http://www.iamport.kr>), takže služby, týkající se plateb, jsou snadné a komfortní.

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Platba

Systémové požadavky

iPoznámka

Chcete-li se skenerem používat skenovací software, přečtěte si prosím systémové požadavky pro Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.

Systémové požadavky pro Windows

	Notebook & Stolní počítač
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz nebo vyšší
RAM	16 GB nebo více
Grafika	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) nebo vyšší / nebo ekvivalentní AMD video karta
OS	Windows 8 64 Bit (nedostupný v 32 Bit) nebo vyšší

Systémové požadavky pro macOS

	Mac
Procesor	M1 s 8-jádry, 7-jádrovým GPU a 16-jádrovým Neural Engine
RAM	16 GB nebo více
OS	Monterey 12

Systémové požadavky pro webovou službu

Doporučené pro prohlížeče

	Prohlížeče
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox

Minimum pro mobilní zařízení

Typ	Android	iOS
Zařízení	Ekvivalent Galaxy S7 nebo vyšší	Ekvivalent iPhone 7 nebo vyšší
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB nebo více	2 GB nebo více
AP	Vyšší než Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalace na Windows

Medit Link je nainstalován jako balíček s programy pro získávání skenů - Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.


1. Spusťte Medit_LinkSetup.exe.
2. Vyberte jazyk instalace.
3. Vyberte složku pro instalaci Medit Link. Přečtěte si prosím licenční podmínky, odsouhlaste je a klikněte na „Instalovat“.



4. Před pokračováním k dalšímu kroku se ujistěte, že je kabel skeneru odpojen od počítače. Instalace nemusí pokračovat, pokud je skener připojen k počítači.
5. Program se nainstaluje automaticky a může to trvat několik minut. Nevypínejte ani neodpojujte počítač, dokud nebude instalace dokončena.

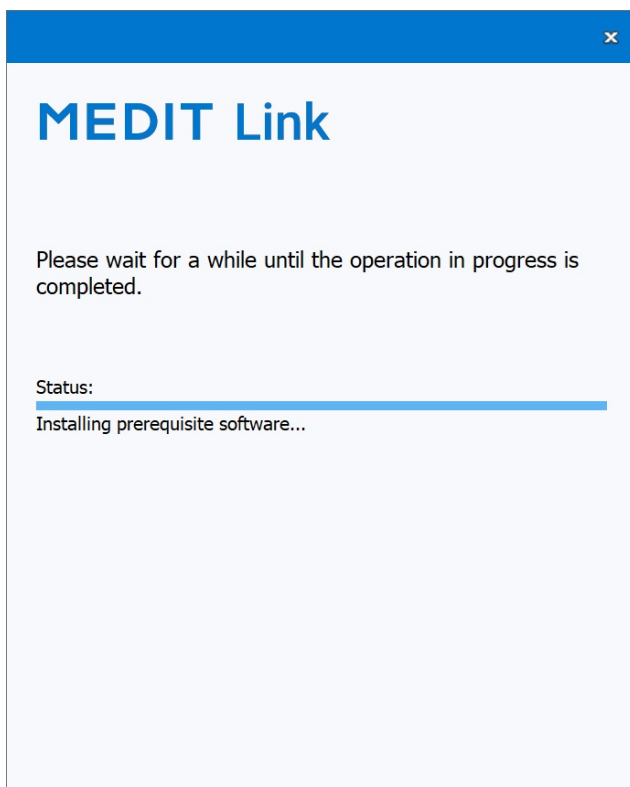

6. Po dokončení instalace restartujte počítač, prosím. Pokud skener nemáte, můžete pokračovat dále také bez restartování počítače.

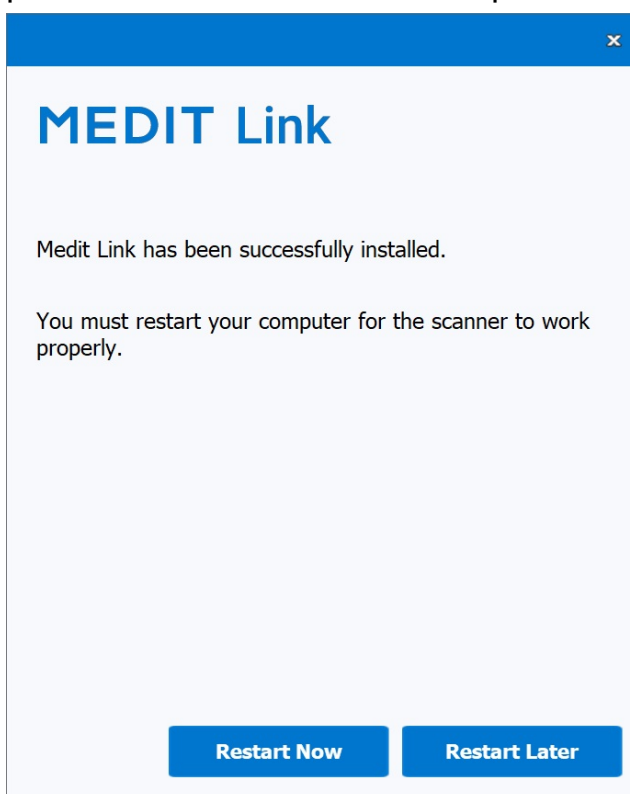


!Poznámka

Pokud po dokončení instalace nerestartujete počítač, skener nemusí fungovat správně.


Instalace na macOS

Medit Link je nainstalován jako balíček s Medit Scan for Clinics.


1. Spustíte Medit_Link_x.x.x.pkg a kliknete na „Pokračovat“.

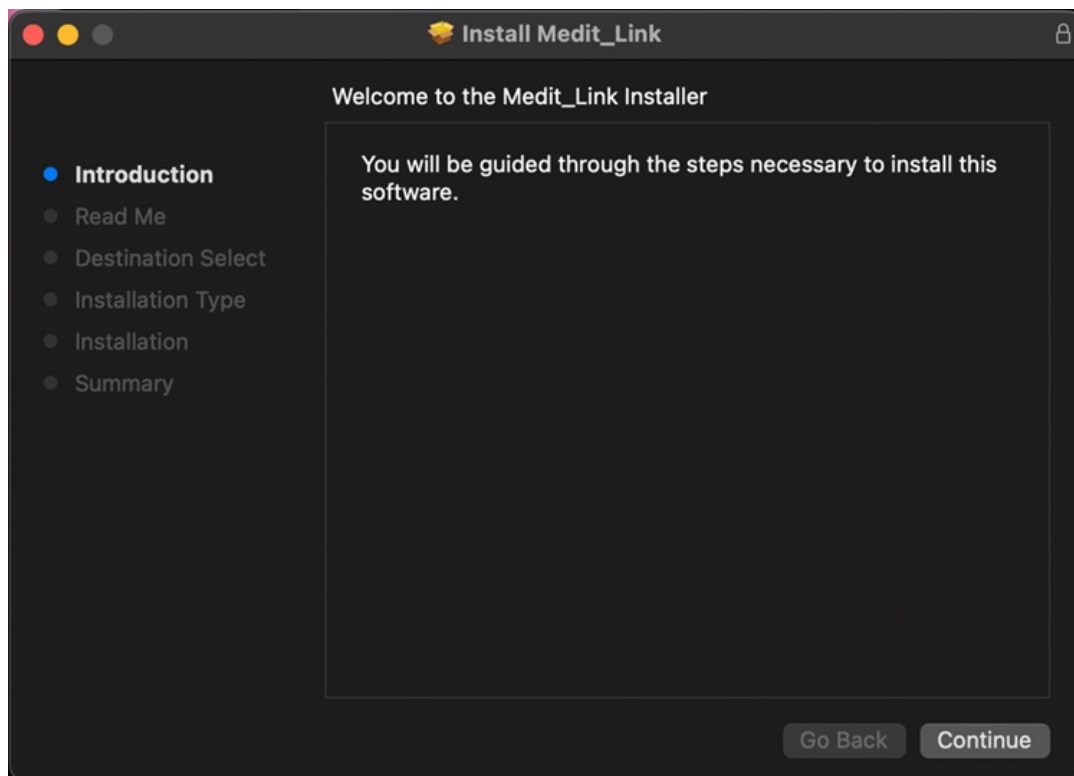


2. Přečtete si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem a kliknete na „Pokračovat“.

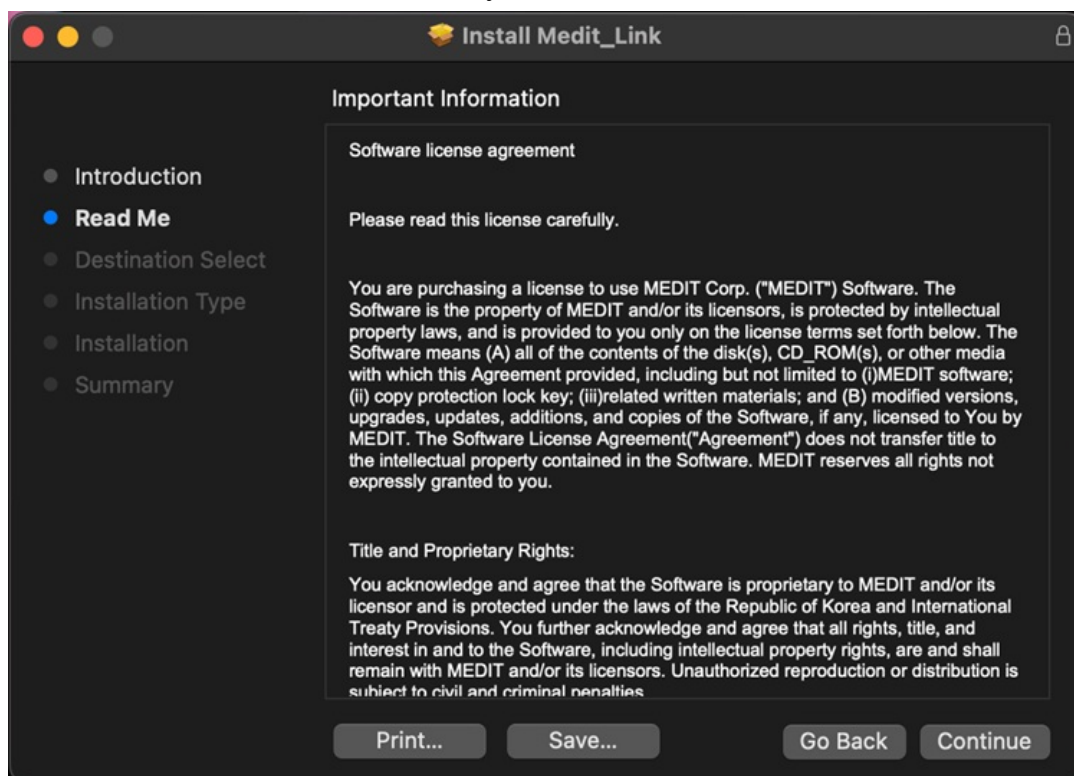

3. Vyberte disk, který chcete nainstalovat a kliknete na „Pokračovat“.

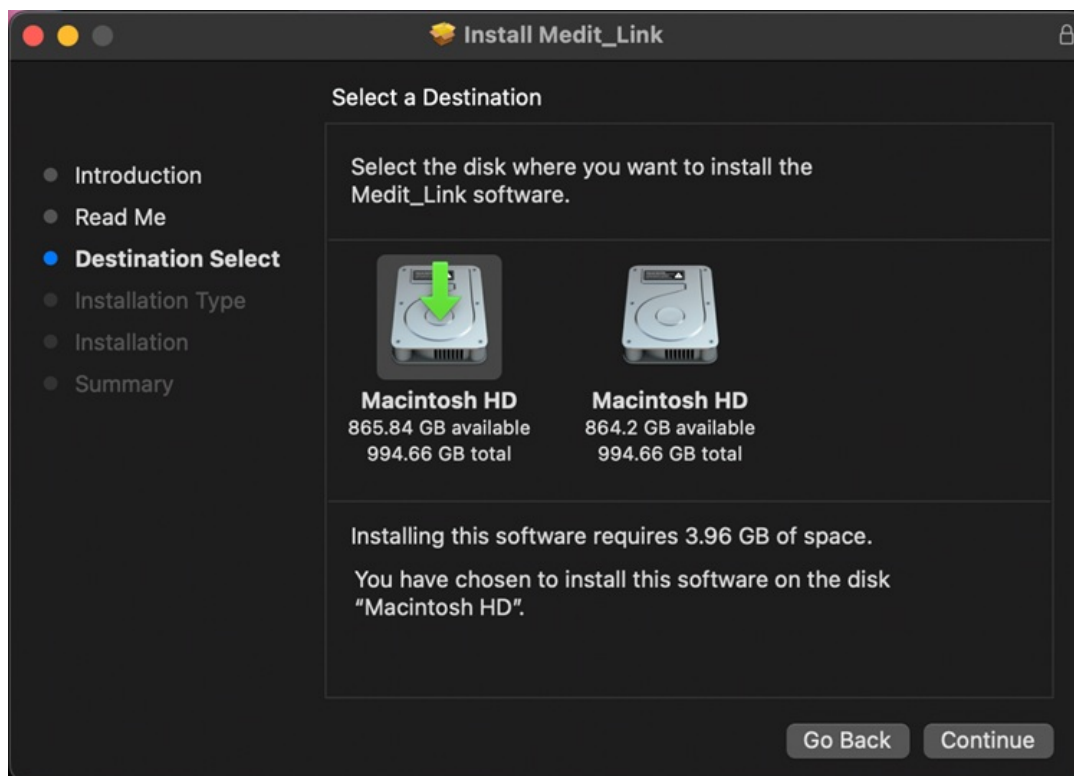


4. Chcete-li změnit lokalitu instalace, klikněte na „Změnit lokalitu instalace...“.

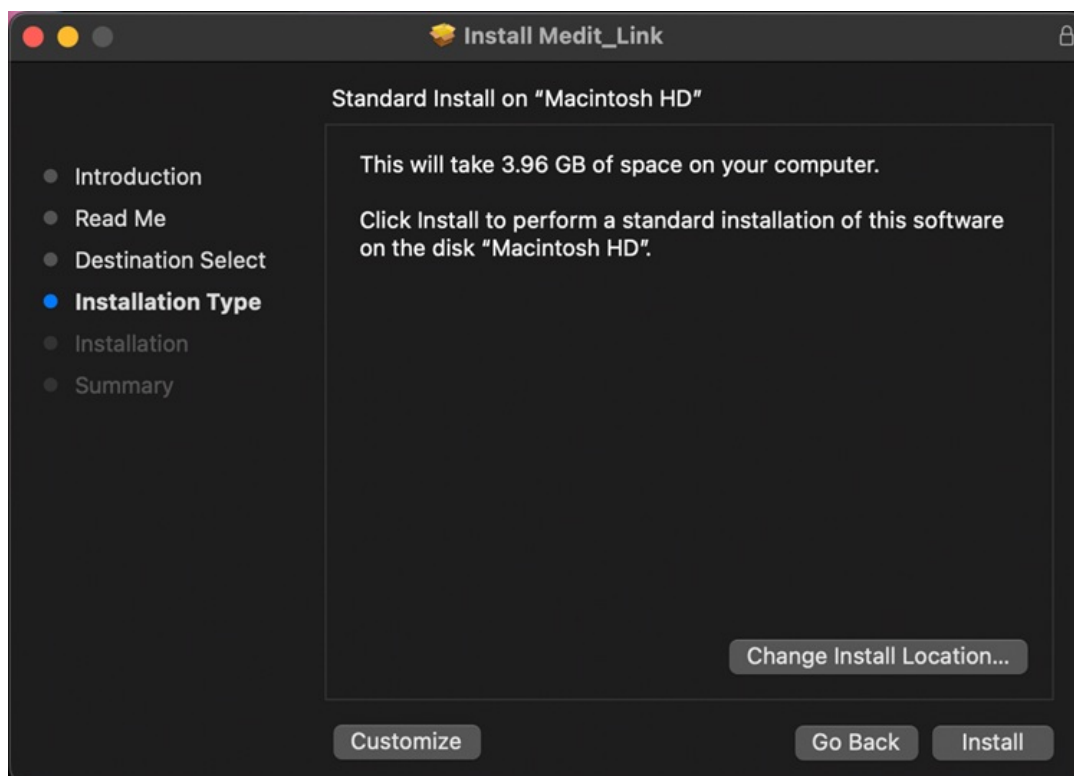


5. Klikněte na „Instalovat“ a zadejte heslo pro Mac pro povolení instalace, pokud o to budete požádáni.



6. Počkejte na dokončení instalace.

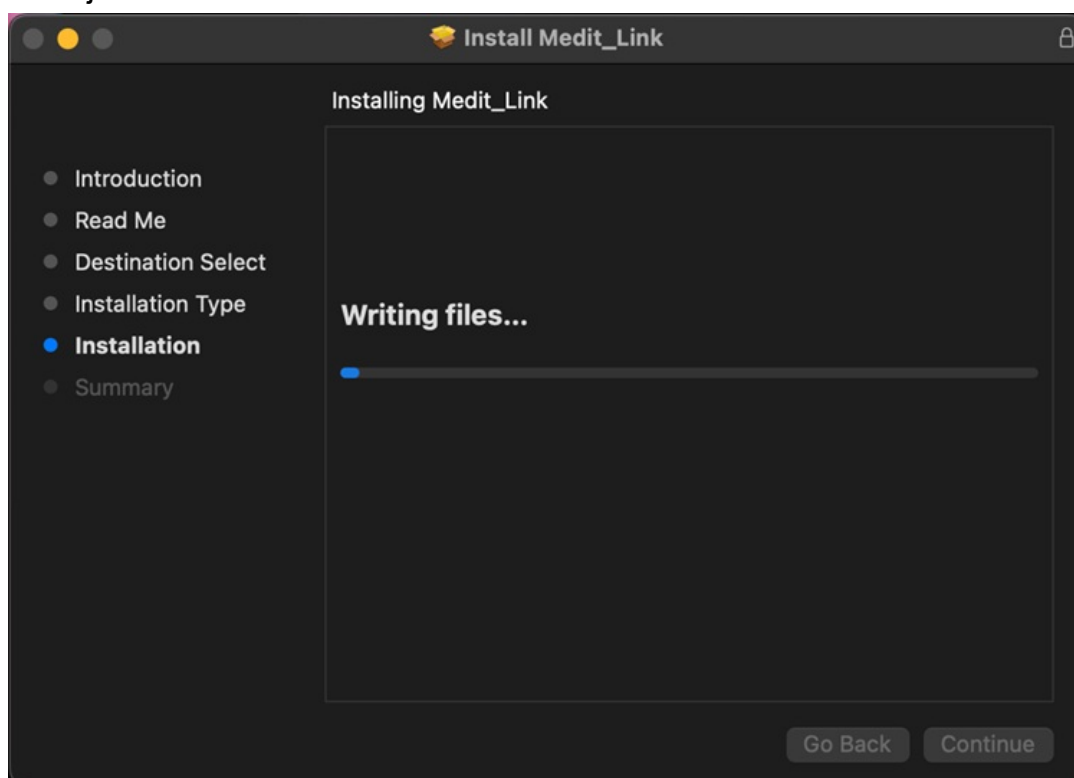


7. Kliknutím na „Zavřít“ okno instalace zavřete.

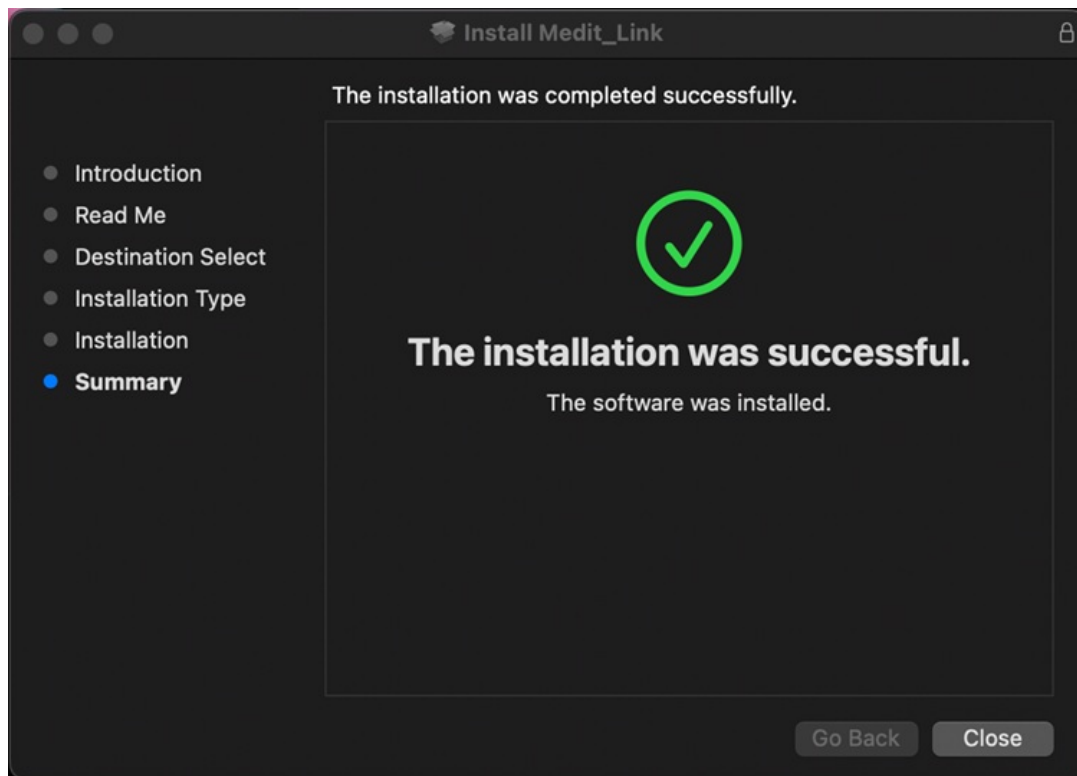

Registrovat se a Přihlásit se

Medit Link Webstránka

Zaregistrujte se ke službě Medit Link na www.meditlink.com.

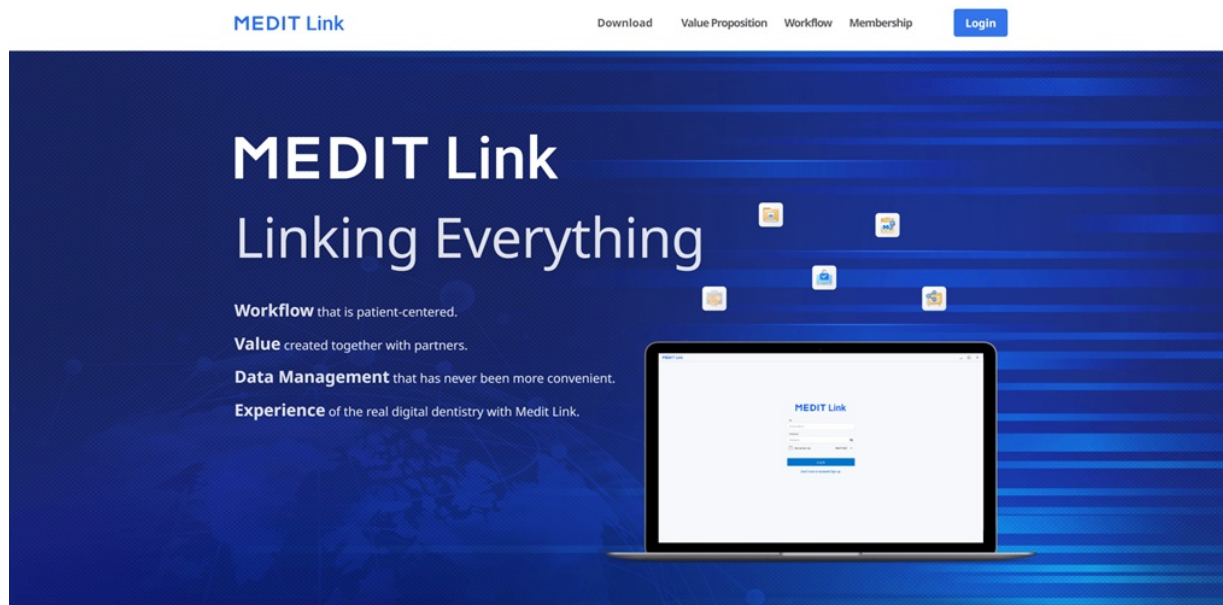

!Poznámka

Zaregistrujte se do Medit Link China na www.meditlink.cn.

Registrovat se

Pro použití služby Medit Link si musíte zaregistrovat účet. Po vytvoření účtu jako klinika nebo laboratoř můžete využívat funkce poskytované v Medit Link.

Uživatelé si mohou vybrat jeden z následujících čtyř typů účtu pro registraci členství a službu je tak možné používat s úplnými nebo omezenými funkcemi a oprávněními, v závislosti na typu účtu.

- Klinika - Admin
- Klinika - Člen
- Laboratoř - Admin
- Laboratoř - Člen

Administrátor je obvykle zástupcem vaší organizace a bude mít plný přístup ke všem funkcím a službám Medit Link. Naproti tomu členský účet má omezený přístup.

Chcete-li se zaregistrovat k členství, postupujte takto:

1. Klikněte „Nemáte ještě účet? Registrovat se“ na stránce přihlášení.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Po přečtení poskytnutých popisů klikněte na tlačítko „Registrovat“ u požadovaného typu účtu.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.


Register

3. Zadejte název kliniky nebo laboratoře a poté v závislosti na požadovaném typu účtu proveďte následující:
- Pokud se registrujete jako administrátor, klikněte na „Zkontrolovat dostupnost“ a zjistěte, zda je zadané jméno dostupné.
 - Pokud se registrujete jako člen, klikněte na „Hledat.“ Administrátor musí vaši organizaci zaregistrovat dříve, než se zaregistrujete.
4. Vyplňte zbytek registračního formuláře a klikněte na „Registrovat“. Bude vám zaslán ověřovací e-mail.
5. Chcete-li dokončit proces registrace, ověřte vaši e-mailovou adresu pomocí obdrženého

odkazu.

Přihlašovací a uvítací stránka

1. Na přihlašovací stránce zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlásit se“.

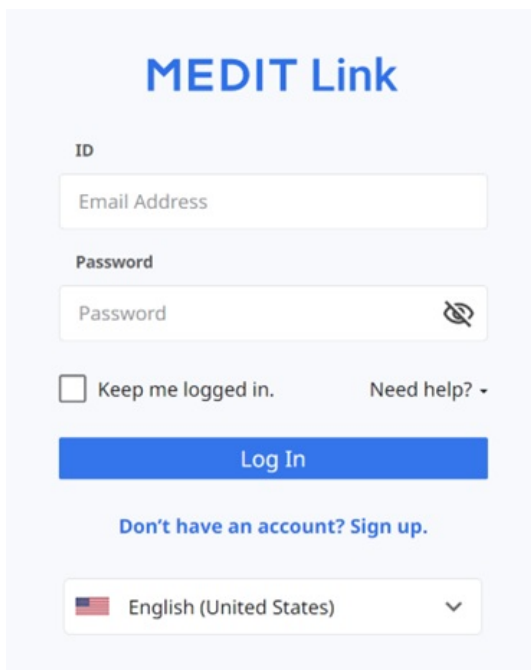


The login form for MEDIT Link features a light blue header with the logo. Below it, there are two input fields: 'ID' (with a placeholder 'Email Address') and 'Password' (with a placeholder 'Password' and a toggle icon). A checkbox for 'Keep me logged in.' is next to a 'Need help?' link. A prominent blue 'Log In' button is centered below these fields. At the bottom, there is a link 'Don't have an account? Sign up.' and a language dropdown menu currently set to 'English (United States)'.

2. Pokud jste nevyplnili informace o organizaci, zobrazí se následující dialogové okno.

!Poznámka

Chcete-li používat služby Medit Link, je třeba zadat informace o vaší organizaci využitím účtu administrátora.

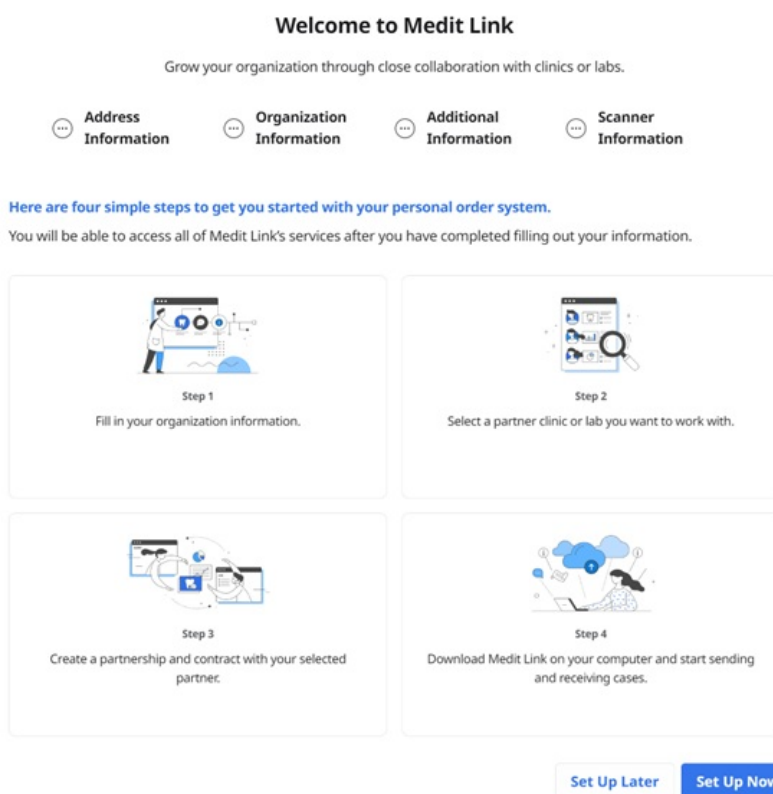

The 'Welcome to Medit Link' page has a white background. It starts with the title 'Welcome to Medit Link' and a subtitle 'Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.' Below this are four icons representing the setup steps: 'Address Information', 'Organization Information', 'Additional Information', and 'Scanner Information'. A blue link states: 'Here are four simple steps to get you started with your personal order system.' Below this, a paragraph says: 'You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.' The main content consists of four numbered steps, each with an illustration and a description: Step 1 (Fill in your organization information), Step 2 (Select a partner clinic or lab you want to work with), Step 3 (Create a partnership and contract with your selected partner), and Step 4 (Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases). At the bottom right, there are two buttons: 'Set Up Later' and 'Set Up Now'.

3. Klikněte na „Nastavit nyní“ a postupně zadejte Informace o adrese, Informace o organizaci, Dodatečné informace a Informace o skeneru.

Pokud jste při registraci souhlasili se zasíláním marketingových informací, obdržíte od výrobce užitečné informace, týkající se produktu a služby.

4. Informace zadané na uvítací stránce lze kdykoli upravit na stránce Moje info > Moje organizace na webu Medit Link.

Náhled


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link application. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main area shows a list of cases with filters for status (All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed) and a date range (2023-01-06 to 2023-04-06). The table lists 18 cases, showing details such as Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. Each case entry includes a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Scan Completed	mandibular movement - Clone - ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-

Dashboard

Náhled Dashboardu

Celkové statistiky, provedené na Medit Link, si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách – jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

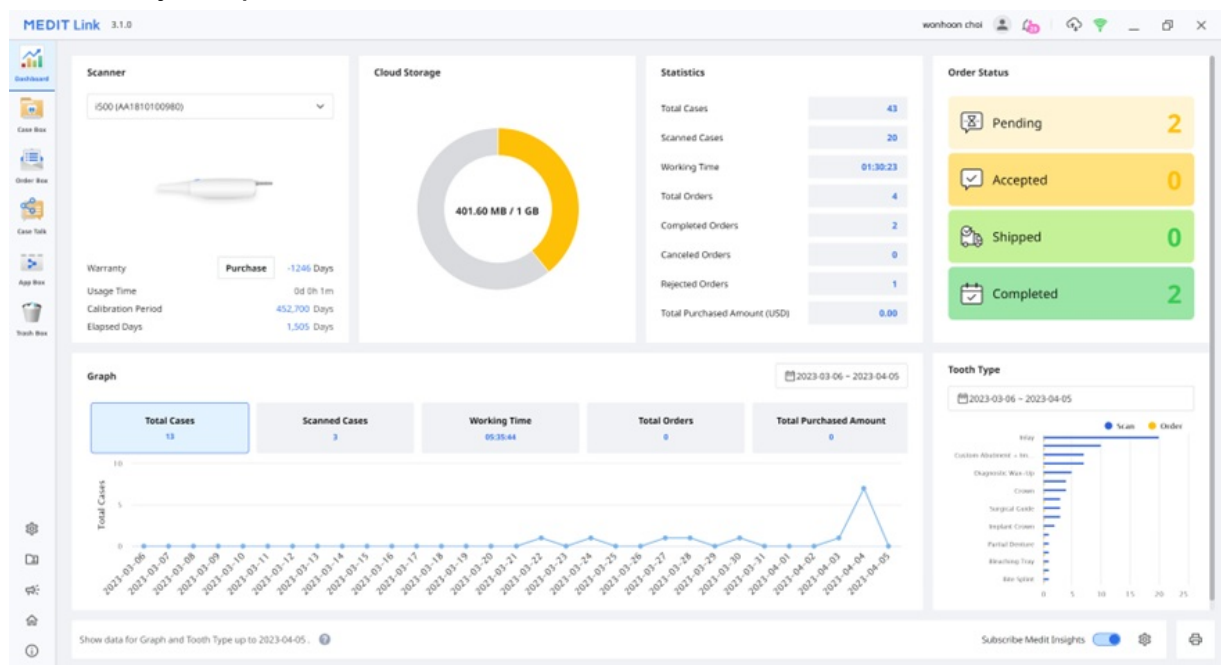

Grafy a tabulky na panelu Dashboard zobrazují statistiky pro celou práci, prováděnou v Medit Link.

Skener	Získáte informace o aktivních skenerech, včetně záruky, doby používání skeneru, intervalu kalibrace a uplynulé doby kalibrace.
Cloud úložiště	Zobrazí celkovou kapacitu cloudu a využívané procento.
Celková statistika	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu úlohy.
Stav objednávky	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu objednávky.
Graf	Graf informací o práci podle období.
Typ zubu	Poskytne statistiky počtu skenů a objednávek podle zadaných informací o léčbě.


Medit Insights

Medit Insights je služba reportingu, která vám pomáhá analyzovat statistiky používání.

!Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Medit Insights

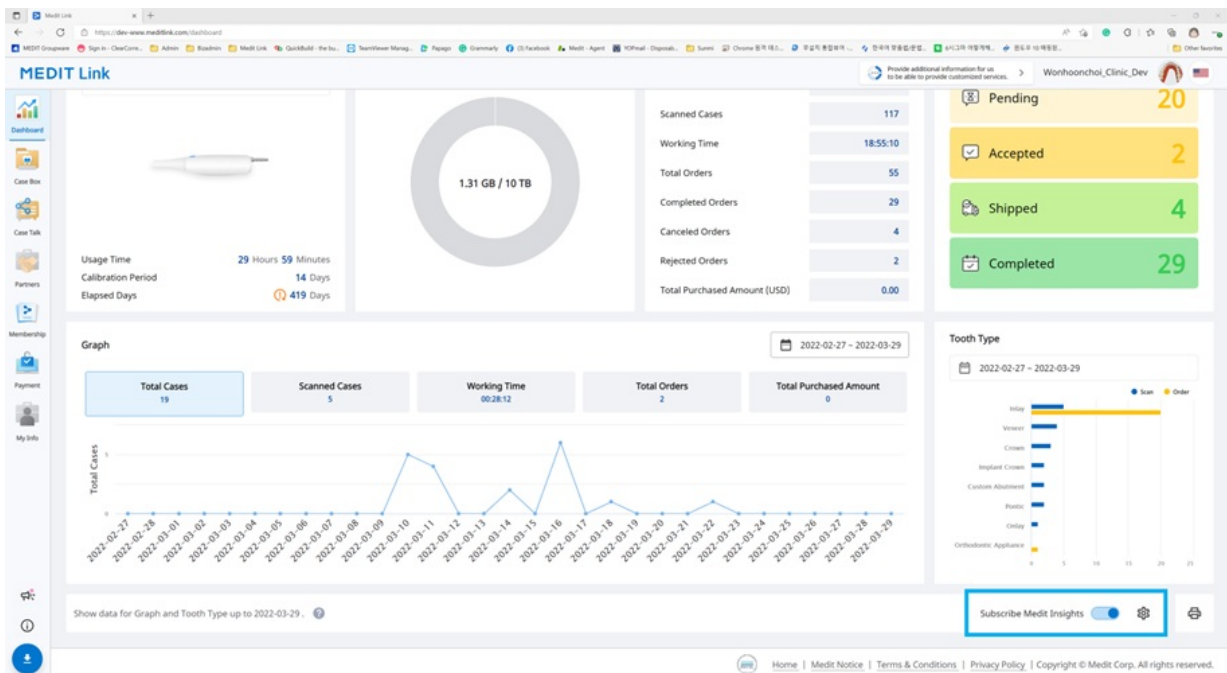

Přihlásit se na odběr Medit Insights

Každý druhý den v měsíci můžete obdržet e-mail s přehledem. Není vyžadován žádný další proces registrace. Stačí povolit „Přihlásit se k odběru Medit Insights“.

Pokud nepoužíváte e-mailovou adresu, kterou jste použili pro účet Medit Link, můžete si pro příjem Medit Insights nastavit jinou e-mailovou adresu.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Druhého dne každého měsíce obdržíte e-mail se statistikami, jak je uvedeno níže.

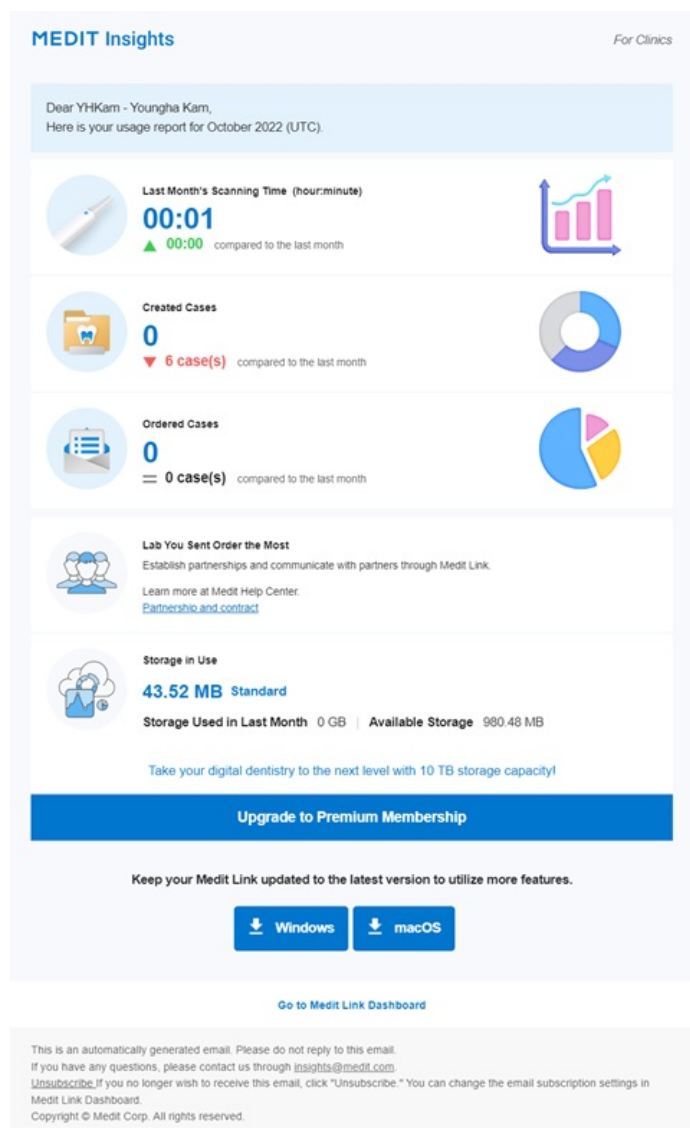


Banner	Medit zde poskytuje užitečné tipy a informace. * Pokud nechcete, aby se banner zobrazoval, zrušte zaškrtnutí políčka Marketingová a propagační smlouva v části Moje info > Můj účet.
Statistické informace	Zobrazí se statistické informace, jako je doba skenování, vytvořené případy, nejvíce objednávaná laboratoř, atd.
Stažení Medit Link	Tlačítko poskytuje odkaz ke stažení Medit Link.
Dashboard	Všechny statistické informace jsou založeny na informacích z vašeho Dashboardu. Další detaily můžete vidět v Dashboardu.

Odhlásit se z odběru Medit Insights

Deaktivujte „Přihlásit se k odběru Medit Insights“ na Dashboardu nebo klikněte na „Odhlásit se z odběru“ v přijatém e-mailu.

Case Box/Work Box


Case Box (Klinika) nebo Work Box (Laboratoř) zobrazuje všechny případy, které uživatel vytvořil v aplikaci Medit Link. Je možné prohlížet soubory využitím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu.

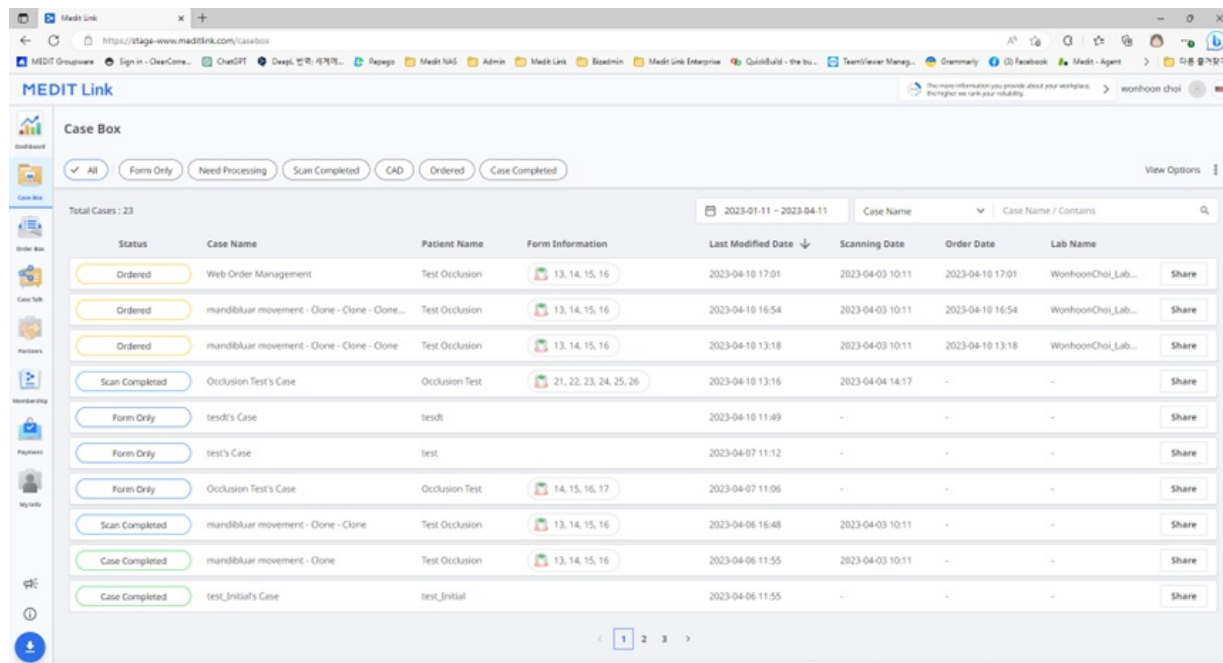

Filtrování případu

Filtrovat podle stavu

Případy můžete filtrovat na základě jejich stavu.

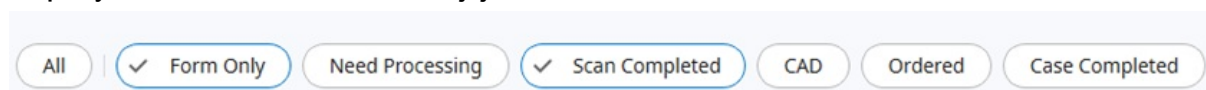

- Uživatel může kliknout na stav, který chce zobrazit. Prohlížeč zobrazí pouze případy se zvoleným stavem.
- Uživatel může vybrat také více stavů najednou.

Na základě typu účtu je poskytován následující typ stavu:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Laboratoř)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Filtrovat podle trvání

Můžete filtrovat a zobrazovat případy, které byly naposledy změněny během vámi nastaveného období.

1. Klikněte na filtr doby.



2. Zvolte rozsah.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené se včerejším datem.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 7 dní, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 30 dní, kromě dneška.
- Posledních 90 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny za posledních 90 dní, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy z tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Filtrovat podle vyhledávání

Můžete využít možnosti vyhledávání pro snadné a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

Možnosti vyhledávání na základě účtu kliniky/laboratoře:

Case Box (Klinika)	Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře
Work Box (Laboratoř)	Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky

Detaily případu

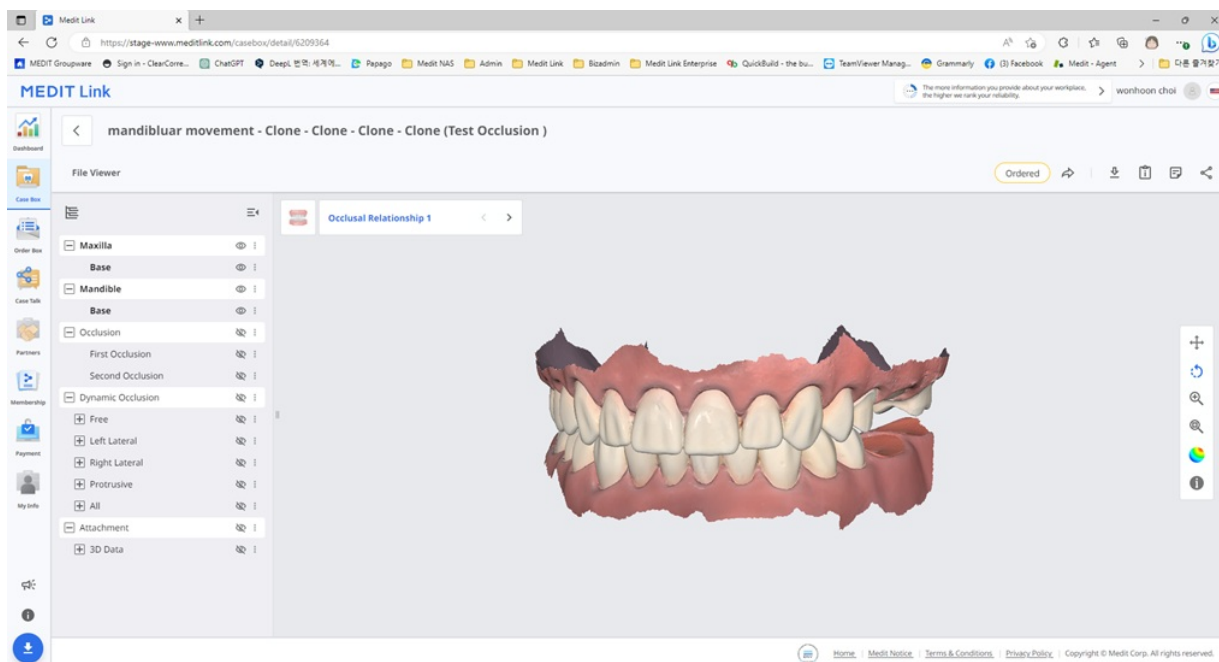

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující nástroje pro správu případů.

	Stav případu	Zobrazit stav případu.
	Přejít na detaily	Poskytne zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Stáhnout	Stáhněte si soubory v případě do místního PC.
	Info o případě	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky & Značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případě svým partnerům.
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mají přístup k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, aniž by museli instalovat další programy. Odkaz můžete volně sdílet s kýmkoli nebo pouze s konkrétními lidmi. Pro zabezpečení soukromých informací lze nastavit PIN kód nebo datum vypršení platnosti odkazu.

Order Box/In Box

The Order Box (Clinic) or In Box (Lab) shows ordered cases on the Medit Link application.

Detaily objednávky

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top navigation bar includes a search bar and a 'Cancel' button. The left sidebar contains icons for various functions. The main content area is divided into two panels. The left panel (labeled 1, 3, 5) contains a form for order details, including fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, Expected Delivery Date, Memo, and Tags. The right panel (labeled 2, 4, 6) displays a table of ordered products with columns for No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The table lists 8 items, all of which are Inlay or Onlay, made of Multi-Layered Zirconia or Glass Ceramic. The total price is USD 0.00.

- | | |
|---|--|
| 1 | Zobrazí název případu a jméno pacienta. |
| 2 | Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení). |
| 3 | Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů |
| 4 | Show functions for managing cases and files: case status, shortcuts for detailed information, case information, memo & tags, etc. |
| 5 | Show the detailed information for the order including the order number, patient name, partner name, scanning date, order date, delivery date, and memo & tags. |
| 6 | Show the ordered product information and delivery status. |


Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace objednávky, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínky a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, které určíte, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím „Case Talk“ v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

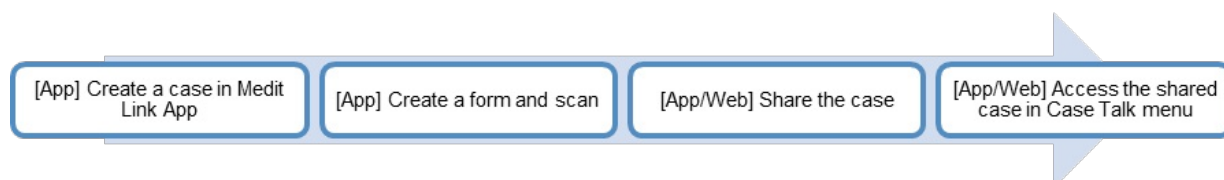


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.


Vytvoření Case Talk

Sdílený odkaz můžete vytvořit k případu, vytvořenému v Case Box/Work Box.

1. Najděte případ, který chcete sdílet a klikněte na tlačítko „Sdílet“ vpravo.

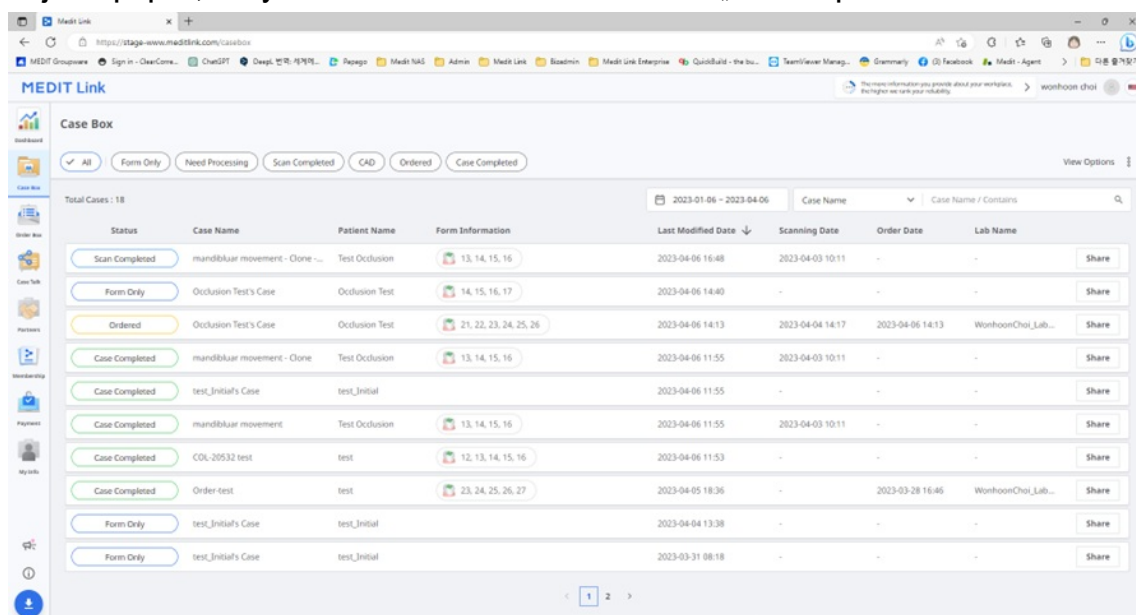

2. Vyberte soubory, které chcete sdílet.

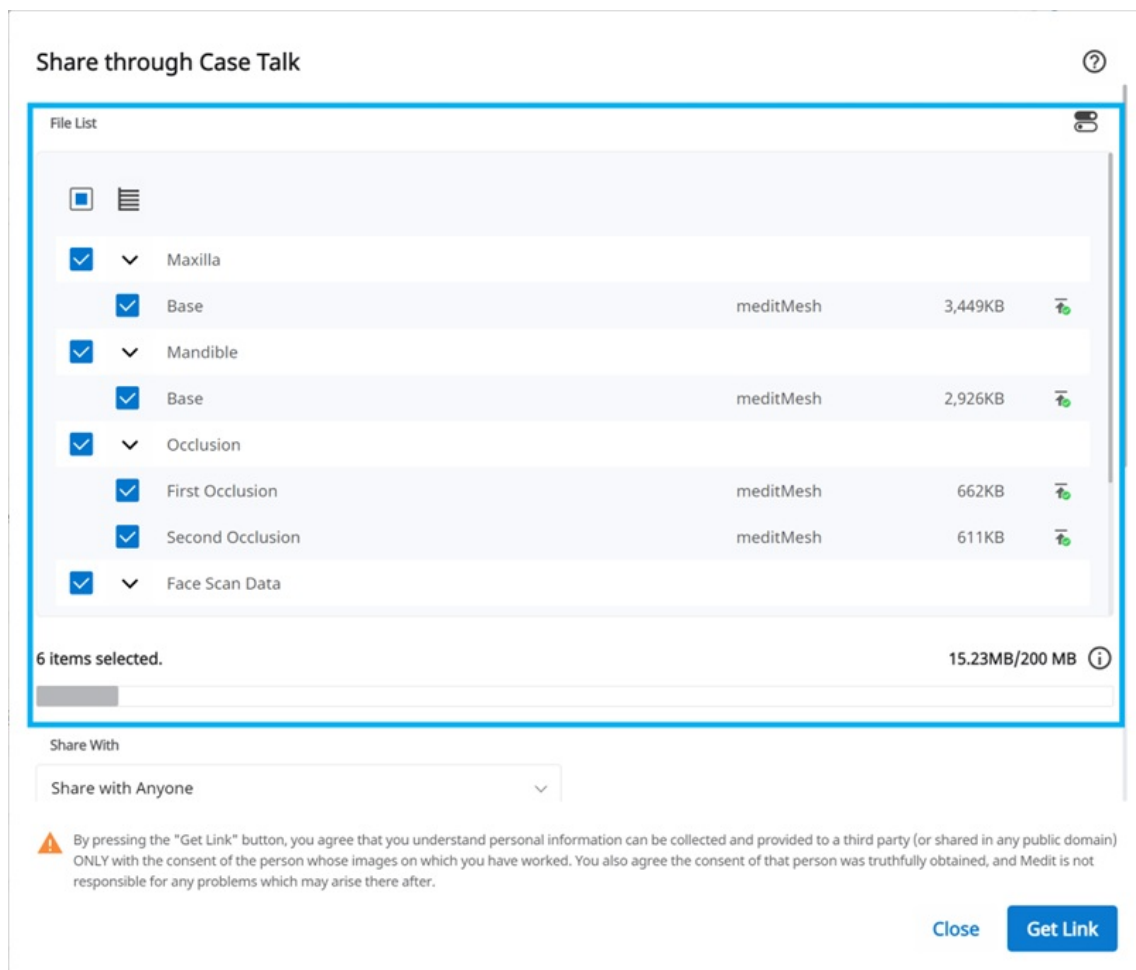

3. Nastavte typ oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení.
4. Kliknutím na „Získat odkaz“ vytvoříte sdílený odkaz.

Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

Sdílet s	- Sdílet s kýmkoli Vytvoří sdílený odkaz. Soubory můžete sdílet s kýmkoli. - Sdílet s konkrétními lidmi Vytvoří a odešle sdílený odkaz konkrétním lidem.
Sdílet prostřednictvím	Pokud vyberete „Sdílet s konkrétními lidmi“, odkaz můžete sdílet s konkrétními lidmi různými způsoby. - E-mailová adresa - SMS - Partneři
Datum expirace	Nastavte datum expirace odkazu. Po vypršení platnosti odkazu už k němu lidé, se kterými jste odkaz sdíleli, nebudou mít přístup k souboru. Období expirace můžete od dnešního dne prodloužit až o 90 dní.
PIN kód	Nastavte 6-místný přístupový kód pro zajištění bezpečnosti dat.
Sdílet jméno pacienta	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni lidé připojeni k odkazu, uvidí jméno pacienta.
Udělit povolení ke stažení	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni uživatelé se sdíleným odkazem mohou stahovat soubory.
Povolit komentáře	- Pokud zaškrtnete tuto možnost, budete moci komunikovat prostřednictvím sdíleného odkazu. - Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, příjemce bude moci pouze zobrazit vaše komentáře, ale nebude moci přidávat své vlastní.


29

Komentář

Můžete zanechat zprávu v sekci komentáře.

Detaily Case Talk

Soubory můžete vidět ve sdíleném případě. Na stránce detaily Case Talk jsou k dispozici následující funkce.

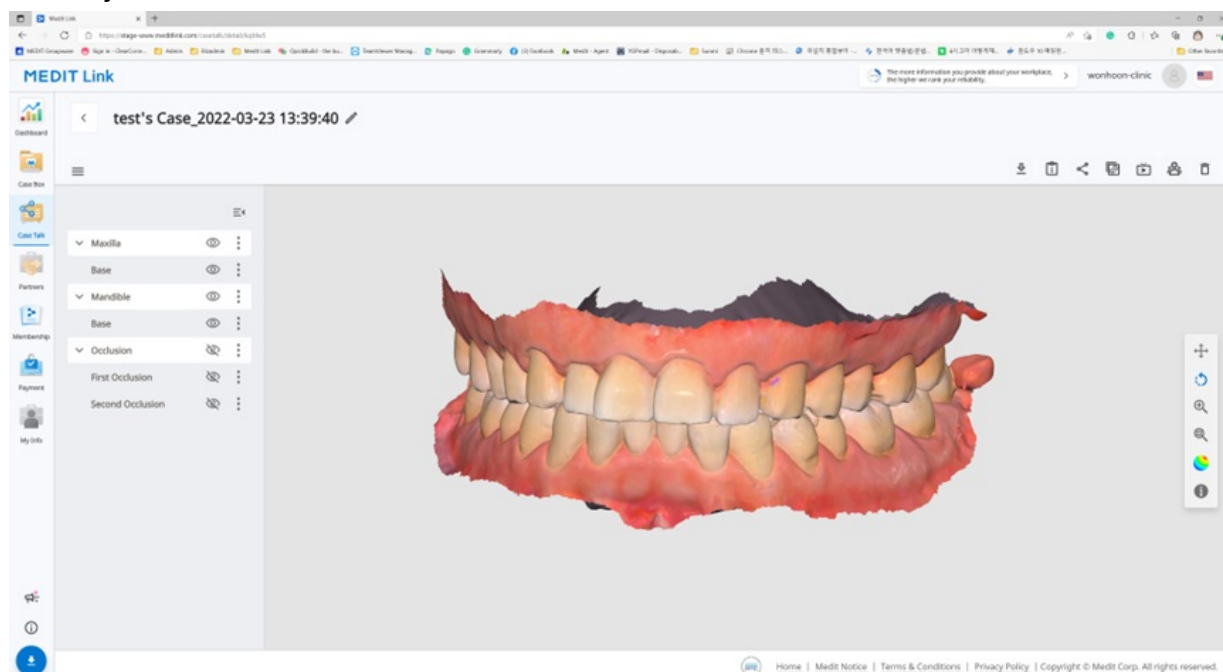

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z tohoto případu do místního počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	Kopírovat odkaz	Zkopíruje sdílený odkaz do schránky. Zkopírovaný odkaz zobrazí sdílené soubory ve vašem webovém prohlížeči.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, přistupující ke sdílenému odkazu.
	Odstranit	Odstranit sdílený odkaz. Smazaný sdílený odkaz již není přístupný.

iPoznámka


Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Web Viewer

Sdílená data můžete zobrazit ve webovém prohlížeči přes Case Talk.

S osobami, které mají přístup k odkazu, je možné komunikovat využitím anotací a komentářů.

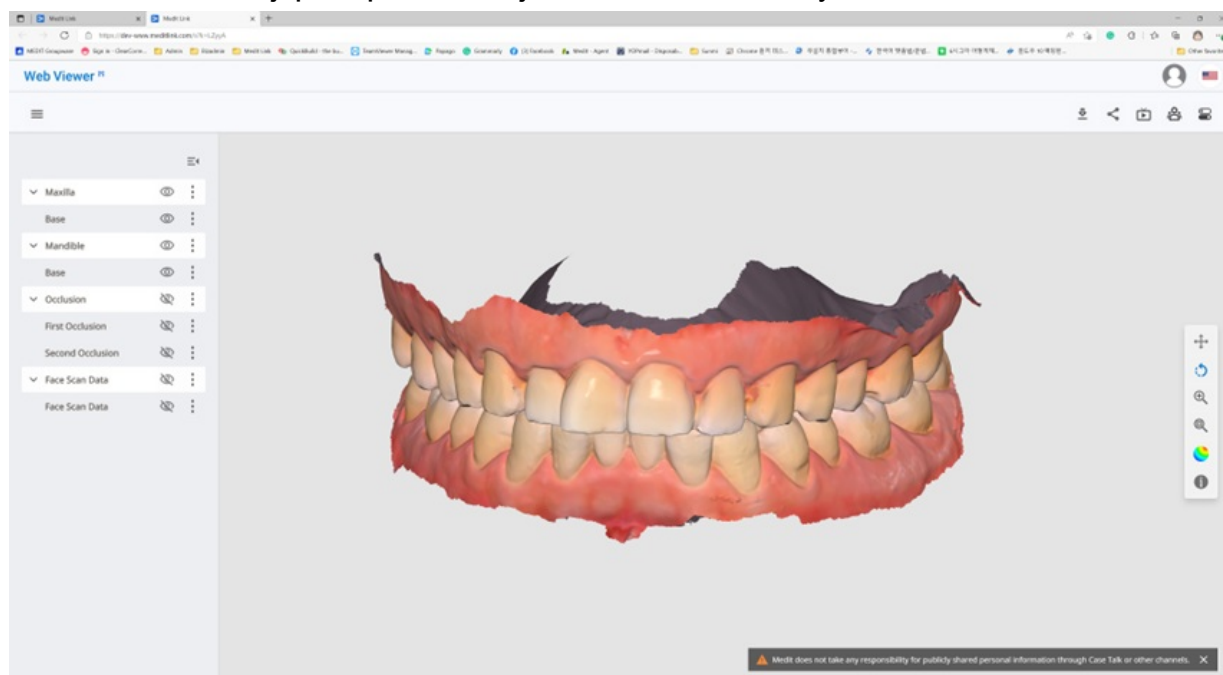

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, připojené ke sdílenému odkazu.
	Značení zubu	Změňte systém značení zubů.


iPoznámka

Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Anotace

Do určité lokality na 3D modelu můžete přidat anotace. Kdokoli s odkazem může zobrazit anotace, které přidáte.

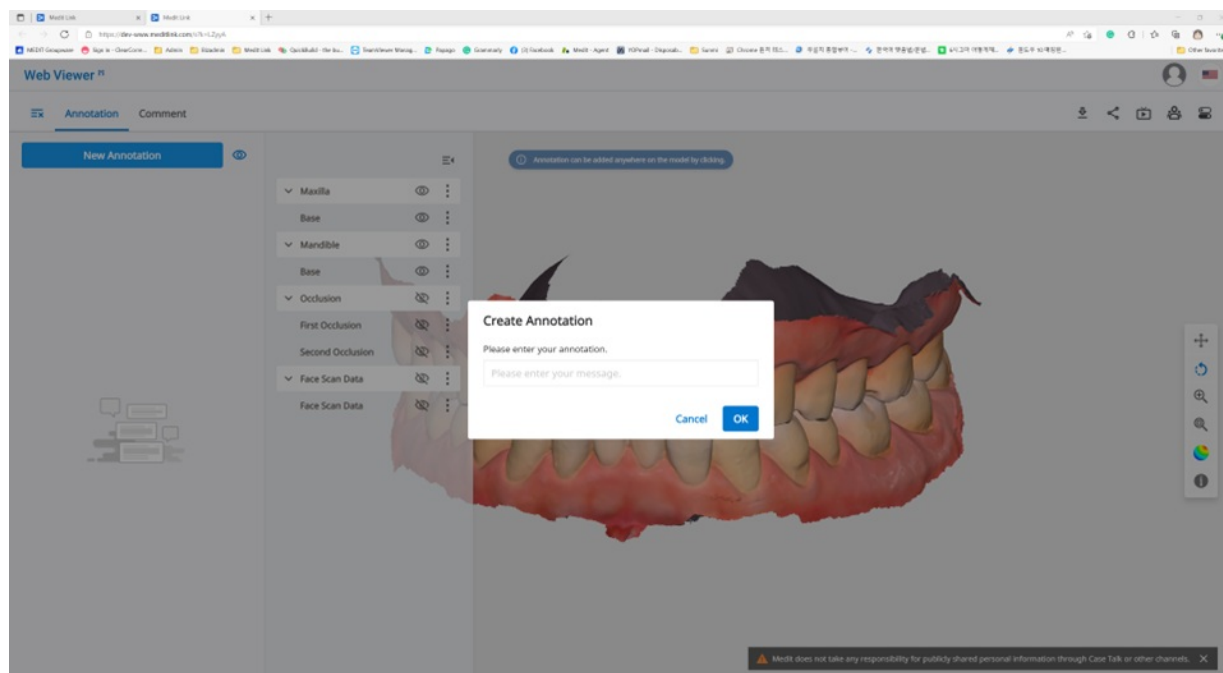

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Anotace

1. Najděte ikonu menu v levém horním rohu a vyberte záložku „Anotace“. Pomocí tlačítka „Nová anotace“ můžete kliknutím přidat kamkoli k datům anotaci.
2. Napište zprávu a kliknutím na „OK“ ji uložte.

This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and a subtitle 'Please enter your annotation.'. Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Anotace můžete použít jako jednoduchý komunikační kanál. Kliknutím na vytvořenou anotaci zadejte odpověď a stiskněte „Poslat“.

This screenshot shows a chat interface for annotations. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with trash and close icons. Below is a message bubble labeled 'Annotation 1' with a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Komentáře

S uživateli, kteří mají přístup k odkazu, můžete komunikovat prostřednictvím záložky „Komentář“ v menu Web Viewer.

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- **Komentář**

Sdílení obrazovky v reálném čase


Svou obrazovku můžete sdílet v reálném čase.

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- **Live**

1. Klikněte na „Live“ pro sdílení obrazovky Web Viewer s připojenými uživateli.

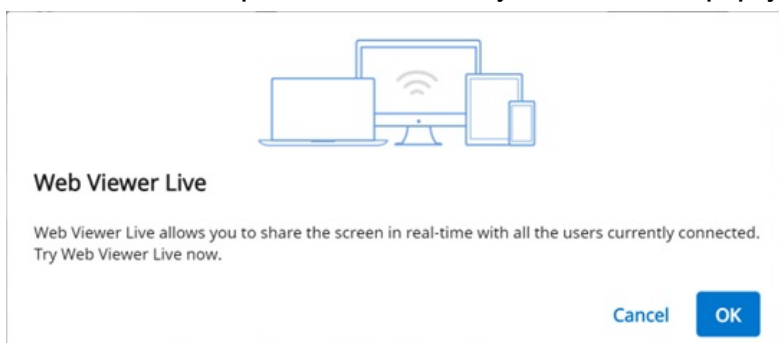



2. Kliknutím na „OK“ zahájíte sdílení obrazovky.
3. Ostatní osoby, které použili odkaz, musí přijmout sdílení obrazovky.
4. Obrazovka uživatele, který zahájil sdílení obrazovky, se zobrazí synchronizovaně s obrazovkou osoby, která obdržela požadavek.

Datový strom





Všechna data jsou seskupena a zobrazena podle atributů v datovém stromu. Můžete zobrazit nebo skrýt data, upravit opacitu a tak dále.

Ovládání datového stromu

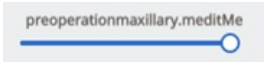Zobrazit / Skrýt	Kliknutím na ikonu „oko“ zobrazíte nebo skryjete data v náhledu. Ovládejte viditelnost dat jako skupinový nebo samostatný soubor.
Opacita	Umístěním ukazatele myši na viditelný prvek zobrazíte posuvník opacity. Upravte posuvník a změňte průhlednost dat. 

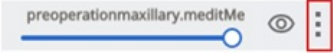Rozšířené menu	Rozšířené menu se nachází na pravé straně každého elementu Datového stromu. Zahrnuje následující možnosti:  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data kromě aktuálních dat. • Skrýt: Skryje aktuální data. • Duplikovat: Klonování dat v rámci aktuálního případu. • Exportovat: Uložení dat do místního počítače. • Smazat: Smaže aktuální data nebo datovou skupinu.
----------------	---

3D ovládání modelu

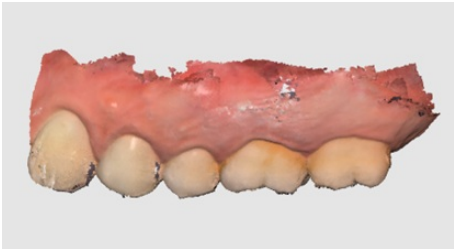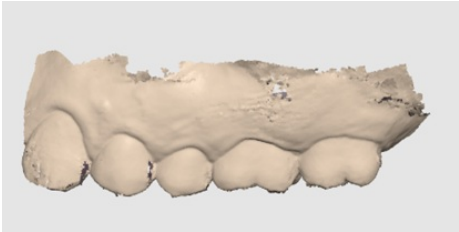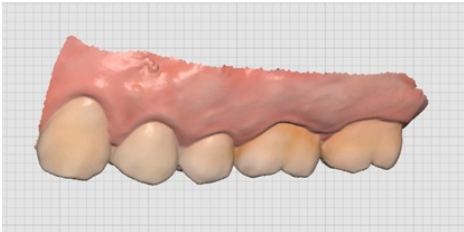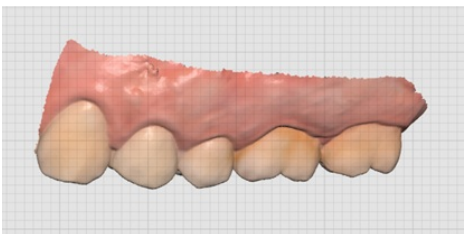	Panorámová	Posunout model.
	Otočit	Rotovat model.
	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicionuje do středu obrazovky.
	Režim zobrazení modelu	Zobrazte data ve skutečných barvách textury. 
		Zobrazí data v jedné barvě. 
	Nastavení mřížky (mm)	Zobrazuje mřížku na pozadí. 
		Překryjte model mřížkou. 



**Mřížka
vypnuta**

Skryje mřížku.

Partneři

Můžete vyhledávat potenciální partnery a požádat o partnerství a zobrazit seznam současných partnerů a partnerů se smlouvami.


iPoznámka

Služby využívající Google Maps nejsou dostupné na Medit Link China.

Vyhledávání Partnerů

Můžete vyhledávat uživatele Medit Link na základě jejich obchodního názvu a/nebo adresy.

Ve výsledcích vyhledávání můžete odeslat žádost o partnerství organizaci, se kterou byste chtěli spolupracovat.

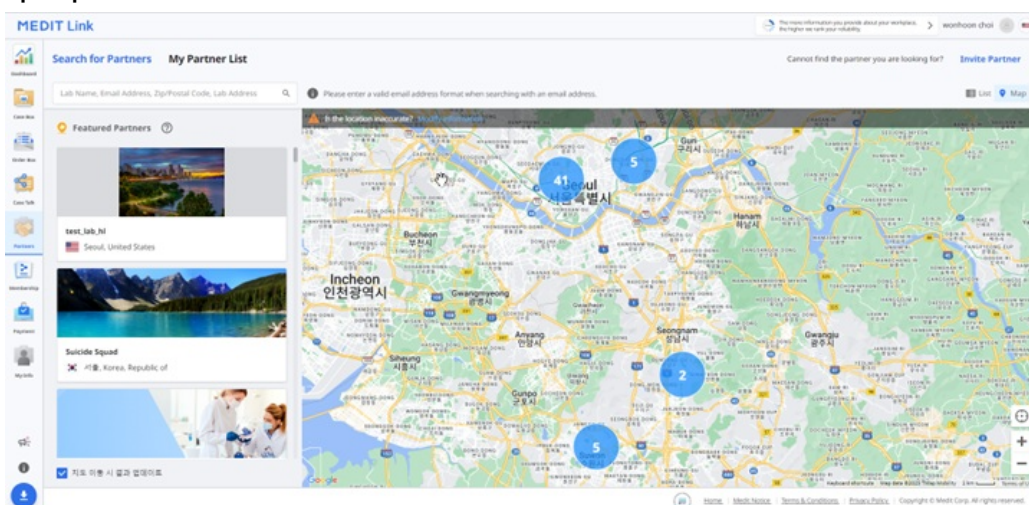


Můj seznam partnerů

Vaše současná partnerství a smlouvy se všemi stávajícími partnerskými firmami si můžete prohlédnout v seznamu Můj seznam partnerů.

Jak se liší smlouva od partnerství?

Jakmile se stanete partnerem společnosti, můžete požádat o uzavření smlouvy s touto organizací.

- Pokud váš partner přijme vaši žádost o uzavření smlouvy, můžete pokračovat v platbě za zadané objednávky.

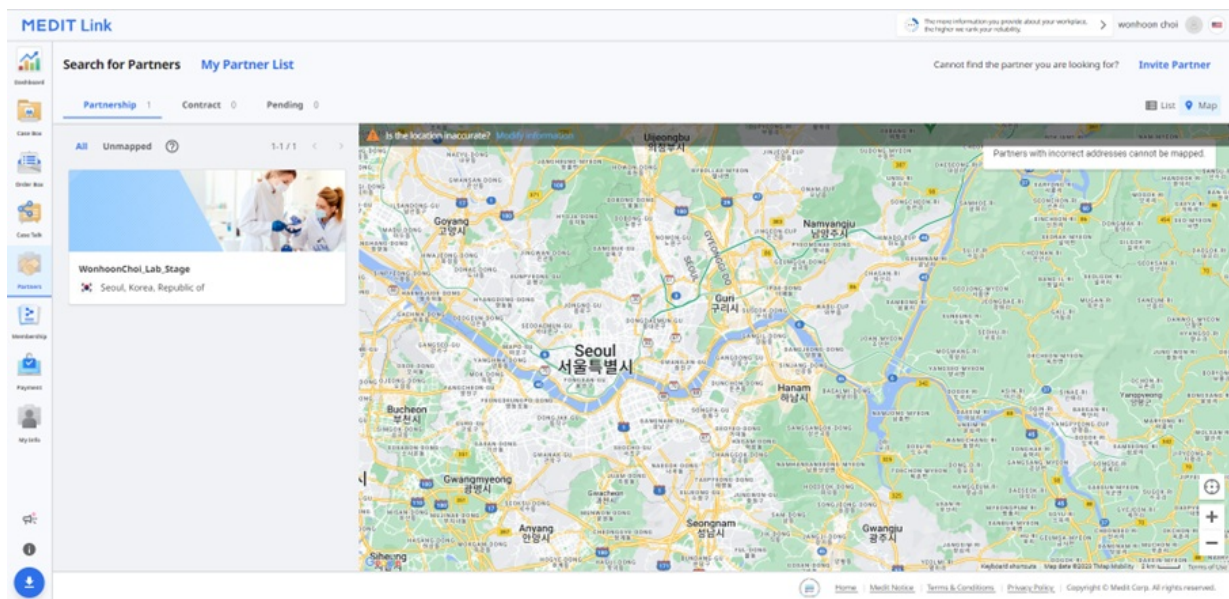

iPoznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Smlouva

Pozvání partnera

Pokud máte organizaci, se kterou chcete spolupracovat, můžete ji pozvat, aby se připojila k Medit Link. Partnerství bude automaticky vytvořeno, jakmile přijmou pozvání.

1. Klikněte na „Pozvat partnera“ v levé horní části obrazovky.
2. Zadejte e-mailovou adresu dodavatele, se kterým chcete spolupracovat a pošlete mu pozvánku se žádostí o partnerství.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. Jakmile pozvaná organizace přijme pozvání a zaregistruje se do Medit Link, partnerství bude automaticky navázáno.

Členství

Členská politika Medit Link má za cíl vytvořit rozsáhlejší digitální prostředí, které se postupně rozšíří o poskytování různých služeb založených na cloudové platformě.

Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům konzistentnější a personalizovanější zkušenost s naší novou politikou, týkající se členství.

K dispozici jsou dva členské plány:

Standard

- Standardní plán zdarma pro všechny přihlášené uživatele
- 1 GB cloud úložiště
- Pro nové uživatele

Premium

- Placený plán
- 10 TB cloud úložiště
- Pro uživatele s mnoha případy a různými daty
- Měsíční bezplatná zkušební verze

	Standard	Premium
Cloud úložiště	1 GB	10 TB
Měsíční poplatek	Zdarma	\$0.99/měsíc

* Cloud Storage nepočítá prostor zabraný surovými daty.

Poznámka

Plány členství budou k dispozici také na Medit Link China. Plán Premium můžete získat zdarma až do oficiálního vydání funkce.

Členství

The screenshot displays the Medit Link web application. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The main content area is titled 'My Plan' and shows the 'Standard' plan as 'Free'. It lists benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is visible. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a donut chart indicating 353.21 MB used out of 1 GB. Below the chart, there are checkboxes for 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB). The footer contains links for 'Home', 'Medi Notice', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and a copyright notice for Medit Corp.

Můj plán

V levé části vidíte, jaký členský plán aktuálně máte. Zde také můžete kdykoli změnit stav svého členství.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)


Cloud úložiště

V pravé části můžete spravovat své cloudové úložiště.

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)

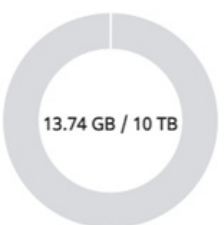

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ ● Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ ● Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	


Nastavit období	Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci. • Vše: Zobrazit všechny soubory. • Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření. • Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření. • Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření. • Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.
Surová data	Surová data nezabírají prostor v cloud úložišti, takže nebudou v pi-grafu. V případě potřeby však odtud můžete spravovat surová data, například je smazat, abyste ochránili soukromé informace pacienta, atd.
Výsledky & Přílohy	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudu. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo.

Přihlásit se k odběru

Pokud aktuálně používáte plán Standard nebo plán Premium s kódem pro uplatnění, můžete si předplatit členství Premium.

Platba se provádí prostřednictvím služby Stripe (www.stripe.com).

1. Klikněte na tlačítko „Přihlásit se k odběru“.

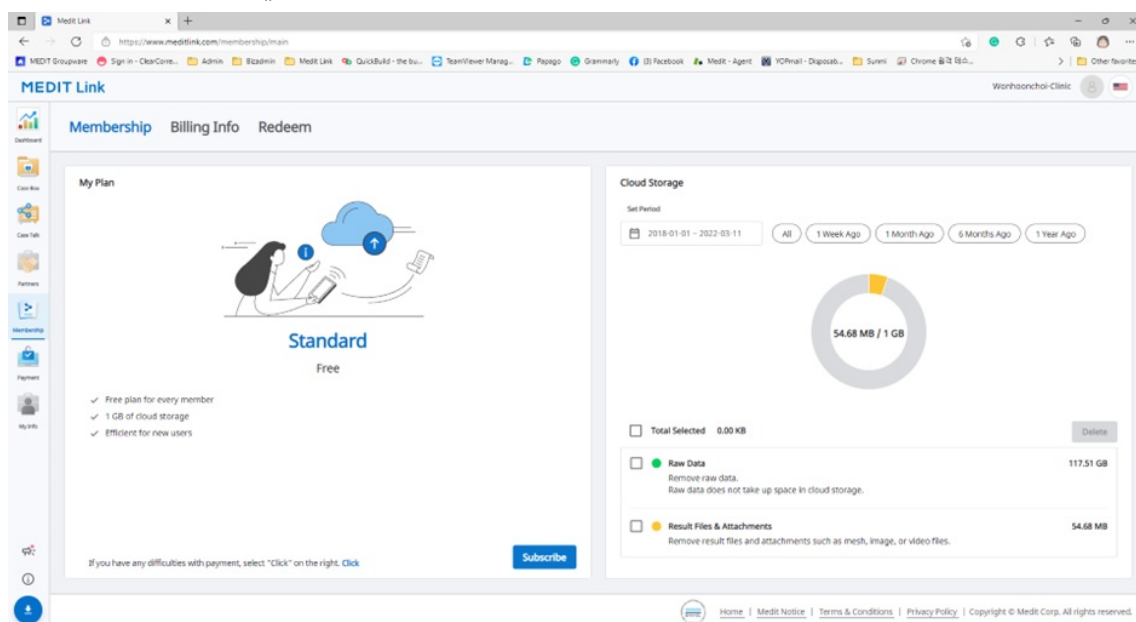

2. Zkontrolujte popis plánu Premium a znovu klikněte na „Přihlášení k odběru“.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Zkontrolujte cenu a podmínky a zadejte potřebné informace pro platbu. Poté klikněte na „Přihlásit se k odběru“.

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Platba může trvat několik sekund. Po dokončení se zobrazí potvrzovací zpráva.

Subscribe Membership



Payment Successful.


Invoice

Close

Odhlásit se z odběru


Z členství se můžete odhlásit kdykoli. Po odhlášení z odběru můžete i nadále využívat po zbývajících dnech zaplaceného měsíce členství Premium. Od dalšího dne platného období se plán změní na Standardní a cloud úložiště bude omezeno na 1 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

1. Klikněte na „Odhlásit se z odběru“.

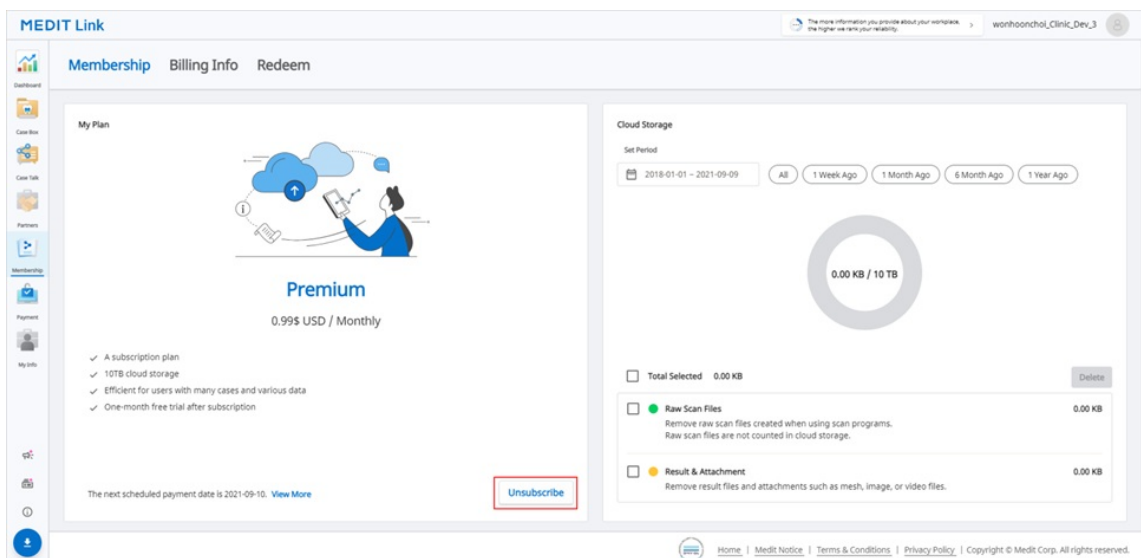

2. Klikněte na „Zrušit předplatné“.

Cancel Subscription

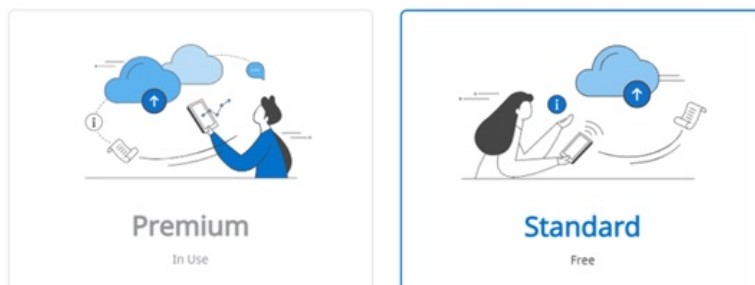

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

Cancel Subscription

Stay Subscribed

3. Chcete-li potvrdit, že se chcete odhlásit, klikněte znovu na „Zrušit předplatné“ v novém vyskakovacím okně.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Vaše předplatné bylo zrušeno.
5. Od dalšího dne platného období se plán změní na Standardní a cloud úložiště bude omezeno na 1 GB. Pokud je kapacita cloud úložiště překročena, soubory nebudou zálohovány a funkce objednávky a sdílení nebudou dostupné.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Fakturační údaje

Můžete zkontrolovat historii plateb za členské předplatné, včetně faktury za každou platbu. Můžete také přidat nebo změnit platební metodu, která bude použita od příští naplánované platby.

MEDIT Link

Membership | **Billing Info** | Redeem

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | [Medit Notice](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Jak přidat platební metodu

1. Klikněte na „Upravit platební metodu“.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

Plan Premium

Amount 0.99 USD / Monthly

Next Payment Date 2021-09-09

Payment Method Visa ****4242 (11/21) | Stripe **Edit Payment Method**

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

- Klikněte na „Přidat platební metodu“.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

- Zadejte požadované informace a klikněte na „Přidat“.

Add payment method

Card information

 Card number	MM / YY
---	---------

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

- Nově přidaná platební metoda bude nastavena jako výchozí a použita od příští platby.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
---	---------	-----------------	---

 **** 4242		Expires 11/2021	...
---	--	-----------------	-----

+ Add payment method

Jak změnit platební metodu

- V dialogovém okně fakturace klikněte na ikonu rozbaleného menu vedle způsobu platby, který chcete změnit.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
 **** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Kliknutím na „Nastavit jako výchozí“ nastavíte vybranou kartu jako výchozí platební metodu.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Uplatnění

Zaregistrujte kód kupónu, poskytnutý v rámci akce. Premium členství můžete používat společně s kódem pro uplatnění.

Registrovat kód kupónu

1. Zadejte kód kupónu a klikněte na „Registrovat“.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Přečtěte si upozornění a ve vyskakovacím dialogovém okně zvolte „Registrovat“ nebo

„Použít“.

- **Registrovat:** Zaregistrujte kód kupónu. Kód pro uplatnění můžete aktivovat a použít později po registraci.
- **Použít:** Zaregistrujte se a aktivujte kód kupónu pro jeho uplatnění. Akční sleva platí okamžitě.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Aktivovat kód kupónu

Můžete zaregistrovat více kódů kupónu, ale musíte aktivovat ten, který chcete použít.

1. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“ vedle kódu, který chcete použít.
Pokud žádný kód se stavem „Aktivní“ neexistuje, bude okamžitě použit ten, který zvolíte. Pokud je již nějaký kód aktivován, jeho stav se změní na „Waiting“ a místo něj bude použit ten, který jste vybrali. Po vypršení platnosti aktuálního kódu pro uplatnění bude automaticky znovu aktivován čekající kód.

2. **Poznámka**
Ve stavu „Waiting“ může být pouze jeden kód.

The screenshot shows the 'Redeem' section of the Medit Link web application. It features a 'Register Redeem Code' form at the top with a 'Register' button. Below this is a table titled 'My Redeem Code' with columns: Promotion, Code Number, Dealer Name, Registration Date, From, To, and Status. The table contains four rows, all with 'Test Promotion - 1 month' and 'Medit Link' as the dealer. The status for each row is 'Registered', and each has an 'Activate' button. The first 'Activate' button is highlighted with a red border.

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Aktivovat
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Aktivovat
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Aktivovat
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Aktivovat

Platba

iPoznámka


Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Platba

Detaily platby (účty Kliniky & Laboratoře)

Na stránce Detaily platby můžete zkontrolovat historii plateb a transakcí mezi vámi a vašimi partnery.

Informace o účtu platby (pouze účet Laboratoře)

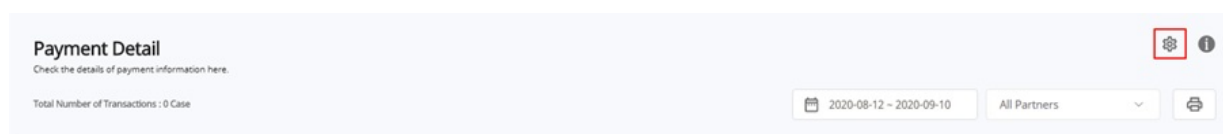

Tato funkce je dostupná pouze pro účet administrátora laboratoře, aby mohl zadávat informace a dostat zaplacení od vašich partnerů.

- Musíte zadat informace o svém platebním účtu, aby vaši partneři mohli zadávat objednávky prostřednictvím online platebního systému.

iPoznámka

Pokud vyberete zemi, kde je Stripe podporován, budete přesměrováni do Stripe kliknutím na tlačítko pro přihlášení do Stripe.

Můžete vybrat Jižní Koreu, poté můžete zadat číslo místního bankovního účtu pro příjem plateb a KCP zpracuje vaši platbu.

Moje info

Můj účet

Zde si můžete prohlédnout a upravit informace, které jste uvedli při registraci a zkontrolovat stav vašeho členství.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) ▾

Country
Korea, Republic of ▾

1. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information [Subscribe](#)

Standard

Organization Information [Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Moje organizace (pouze účet Administrátora)

Zde si můžete prohlédnout a upravit informace o vaší organizaci. Tato část je dostupná pouze pro účty typu administrátor.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[Address Information](#) [Organization Information](#) [Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of ▾

State/Province *
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Můj skener

Můžete zkontrolovat informace o připojeném zařízení pro účet.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Můj ceník (pouze účet Administrátora laboratoře)

Můžete zadat produkty nabízené vaší laboratoří a informace o ceně každého produktu.

My Account My Organization **My Scanner** **My Price List**

Teeth Arch

AED (1:1)

All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (8/7) Diagnostic Wax-Up (8/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)

☐	Name	Type	Method	Material	Price
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	\$6.03
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

!Poznámka

- Jakmile uzavřete smlouvu s partnerem, váš partner může objednávat vaše produkty na základě tohoto seznamu produktů a ceny.
- Pokud máte partnerství pouze s vaším partnerem, Medit Link nepodporuje objednávky, které vyžadují informace o ceně.

Jiné Menu

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informace Medit

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Academy, Medit Academy YouTube a Medit Centrum nápovědy.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Stáhnout aplikaci Medit Link

Nejnovější verzi instalačního programu si můžete stáhnout z webu. Toto menu je užitečné, když ztratíte instalační program, poskytovaný v balíčku produktu nebo máte zastaralý instalační program.

52

iPoznámka

Medit Link se aktualizuje automaticky, když máte připojení k internetu.

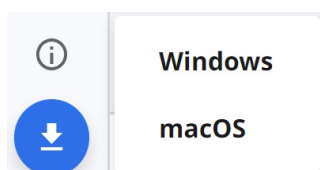

Náhled

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

1	Lišta záhlaví	Viz Aplikace Medit Link > Titulní lišta pro více informací.
2	Menu	Viz Aplikace Medit Link > Menu pro více informací.
3	Nástroje a funkce	Viz Aplikace Medit Link > Prohlížeč souborů a Aplikace Medit Link > Možnosti zobrazení pro více informací.
4	Seznam případů	Viz Aplikace Medit Link > Filtrování a Hledat pro více informací.

Náhled Boxu

Pracovní postup		Účet kliniky	Účet laboratoře
Krok 1	Vytvořte případy	Case Box: Vytvářejte případy, snadno je prohledávejte a prohlížejte pomocí různých možností filtrování a vyhledávání. S vytvořeným případem se můžete přímo propojit se skenovacími programy a CAD programy, a pracovat na nich.	
Krok 2	Objednávka/Správa případů	Order Box: Správa objednaných případů. K dispozici jsou funkce pro řízení procesu od objednání až po dokončení případů.	In Box: Správa případů přijatých objednávek. K dispozici jsou funkce pro řízení procesu přijímání, odmítání, odesílání a dokončování případů.

Krok 3	Práce na skenování/CAD		Work Box: Spravujte případy, které byly předány z In Box nebo které jste vytvořili. Můžete se přímo propojit se skenovacími programy a CAD programy a pracovat na nich.
Krok 4	Sdílet případy	Case Talk: Sdílejte vytvořené případy s omezeními, bez omezení, s konkrétními lidmi nebo jinými registrovanými členy Medit Link.	
Krok 5	Doplňkové nebo dodatečné práce	App Box: Využijte různé aplikace, které doplní váš pracovní postup digitální stomatologie. Můžete si stáhnout a nainstalovat aplikace Medit nebo aplikací třetích stran.	
Krok 6	Smazat/Obnovit případy	Trash Box: Zobrazte, obnovte nebo trvale odstraňte případy z Trash Box.	

Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké Boxy jsou k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.

Typ účtu		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Účty kliniky	Admin	O	O	X	X	O	O	O
	Člen	O	X	X	X	O	O * Pouze funkce obnovení	O
Účty laboratoře	Admin	X	X	O	O	O	O	O
	Člen	X	X	X	O	O	O * Pouze funkce obnovení	O

Lišta záhlaví

Záhlaví poskytuje rychlý přístup k funkcím, jako je stav sítě, cloud synchronizace a upozornění.

Windows	MEDIT Link 3.0.0	Wonhoon Choi_clinic
macOS	Medit Link 3.0.0	Wonhoon Choi_clinic

Moje informace

Moje info obsahují základní informace o uživateli, jako je profilový obrázek, název organizace, e-mailová adresa a uživatelské jméno.

Poskytuje také možnost odhlášení a zástupce na stránku Můj účet na webu Medit Link.

My Information

1

2 Organization Name
Wonhoonchoi_Clinic_Dev

Email Address
wonhoon.choi@medit.com

Name
Wonhoonchoi_Clinic

3 Close

4 Log Out

Edit >

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazit profilový obrázek. |
| 2 | Zobrazuje název organizace, e-mailovou adresu a uživatelské jméno. |
| 3 | Odhlaste se z běžného účtu. |
| 4 | Když jste přihlášení pomocí aktuálního účtu, přejděte na web Medit Link. Můžete zobrazit, upravit a spravovat informace o účtu, které jste zadali při registraci. |

Upozornění

Je možné vidět oznámení o objednávkách nebo informace související s účtem.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Zaškrtnutím políčka zobrazíte pouze nepřečtené zprávy. |
| 2 | Kliknutím na jakékoli oznámení se okamžitě přesunete na související případ nebo webovou stránku. |

Správce synchronizace případů

Správce synchronizace případů vám pomůže nahrávat a stahovat případy v Medit Link. Do cloudu můžete nahrát více případů nebo je stáhnout přímo do místního počítače.

[illegible]

Nahrát

Počet případů / Vybrané případy	Zkontrolujte počet všech/vybraných případů, které je třeba nahrát.
Nahrát vše	Nahraje všechny případy do cloudu.
Zrušit vše	Zruší všechny požadavky na nahrání.
	Nahraje případ do cloudu.
	Zruší nahrávání případu.
	Zkusí případ nahrát znovu.

Stáhnout

Počet případů / Vybrané případy	Zkontrolujte počet všech/vybraných případů, které je třeba stáhnout.
Stáhnout vše	Stáhnout všechny případy do počítače.

Zrušit vše	Zruší všechny požadavky na stažení.
	Stáhnout případ do počítače.
	Zruší stahování případu.
	Zkusí případ stáhnout znovu.

Stav sítě

Když jste připojeni k síti, Medit Link vám umožňuje bezproblémově využívat všechny funkce.

Ikona stavu sítě se zobrazuje v záhlaví, aby vám pomohla zkontrolovat stav připojení k síti v reálném čase.

Pokud není síťové připojení dobré, můžete zaznamenat následující omezení:

- Některé funkce, jako je objednání případu, vytvoření případu, sdílení prostřednictvím Case Talk a cloud synchronizace, budou omezeny.
- Celkový výkon služby může být snížen vlivem síťového prostředí.

V tomto případě můžete přejít do režimu Offline, abyste mohli provádět základní úkoly. Po připojení bude možné používat funkce, které vyžadují internet.

iPoznámka

Symbol sítě označuje rychlost odezvy mezi aktuální oblastí a AWS (Amazon Web Service). Neznamená to rychlost vaší sítě, takže někdy může ukazovat stav jako špatný nebo nevhodný, i když je rychlost vaší sítě dostatečně vysoká.


Pokud druhý proces používá stejnou síť, rychlost může být špatná nebo nedostatečná a celkový výkon Medit Link může být neuspokojivý. V tomto případě prosím nesdílejte síť s jinými procesy.

Například funkce „Nahrát surová data“ je velkou součástí síťového procesu. Pokud symbol ukazuje špatný nebo nedostatečný stav, přejděte do Nastavení > Nahrát surová data a vypněte možnost „Nahrát automaticky“.

Menu

Dashborad


Celkové statistiky, provedené na Medit Link, si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách – jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

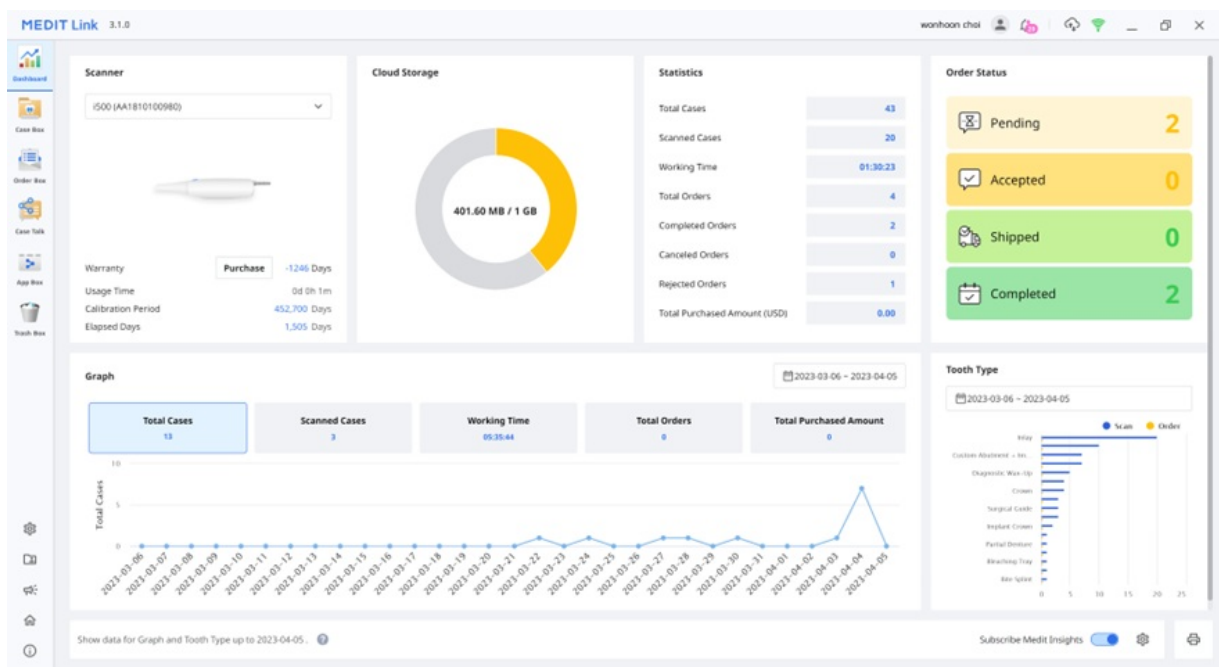

!Poznámka

Viz [Web Medit Link > Dashboard](#) pro více informací o Dashboardu a Medit Insights.

Case Box/Work Box

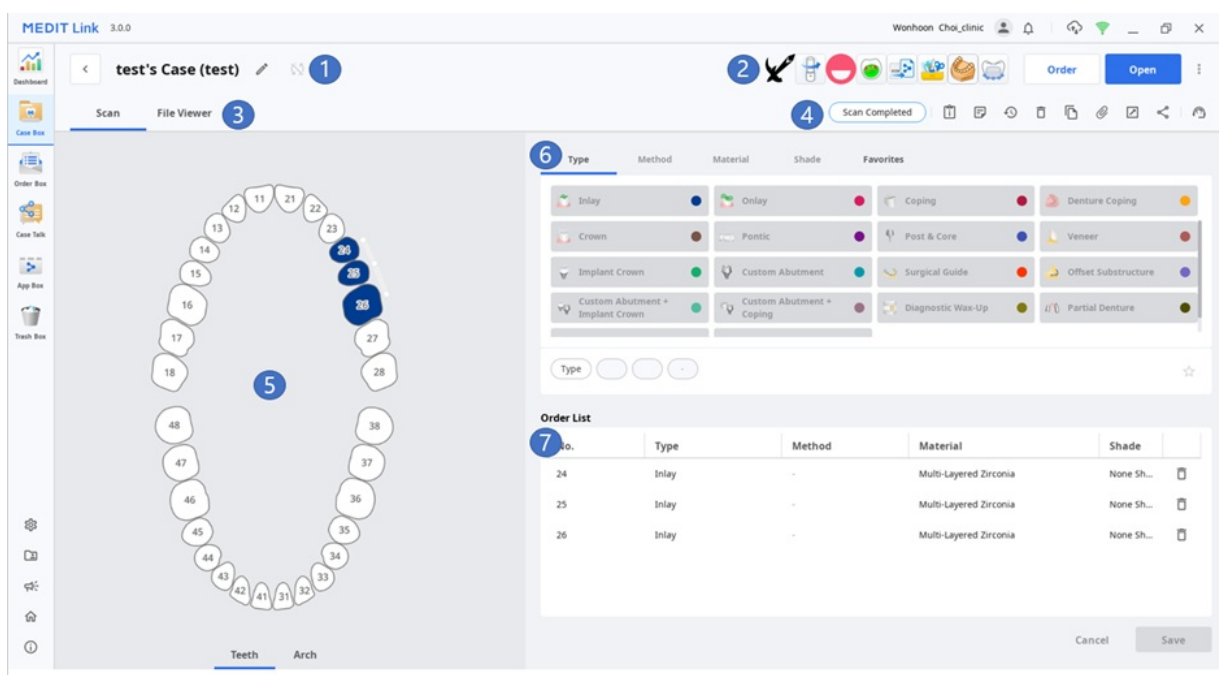

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Poskytuje dostupné klíčové funkce: tlačítka Objednávka/Skenovat (Otevřít)/Objednat a ikony aplikací.
3	Zobrazit dostupné záložky: Formulář, CAD a Prohlížeč souborů.
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů:
5	Zobrazit uživatelské rozhraní pro registraci formuláře pro vybraný CAD program.
6	Poskytněte uživatelům informace o typu/způsobu/materiálu/odstínu, které si mohou vybrat pro vybrané číslo zubu.
7	Ukažte informace o typu/metodě/materiálu/odstín, aplikované na vybrané zuby.

Záložky v Case Box/Work Box

Formulář	CAD	Prohlížeč Souboru
Záložka formuláře poskytuje uživatelské rozhraní pro zadávání základních informací pro skenování, jako je typ, metoda, materiál pro čísla zubů a možnosti skenování. Informace, které zadáte, jsou předány do připojeného skenovacího programu a použity jako informace o objednávce při zadávání objednávky u vašeho partnera.	Záložka CAD poskytuje uživatelské rozhraní pro nastavení možností CAD. Informace, které nastavíte, budou předány do přepojeného CAD programu.	Prohlížejte si výslední soubory, generované skenovacími programy a CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.


Funkce v Case Box/Work Box

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující funkce.

	Stav případu	Zobrazí stav případu.
	Přejít na detaily	Poskytuje zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Info o případě	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky & Značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případě svým partnerům.
	Historie případu	Poskytuje detailní informace o historii případu. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close

	Odstranit	Odstranit případ. Nelze odstranit objednané případy nebo případy vytvořené offline.
	Klonovat	Vytvořte duplikát aktuálního případu v Case Box. Všechna data budou zkopírována do klonovaného případu. Tato funkce pomáhá replikovat informace o léčbě pro stejného pacienta nebo vytvořit další objednávku se stejnými informacemi nebo soubory.
	Připojit	Připojte soubory v různých formátech.
	Exportovat	Exportujte soubory s výsledky skenování nebo CAD do lokálního počítače. Při exportu souborů si můžete vybrat preferovaný formát souboru. Exportované soubory lze použít pro další práci v softwaru CAD a CAM.
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů. Odkaz můžete volně sdílet s kýmkoli nebo pouze s konkrétními lidmi. Pro zabezpečení soukromých informací lze nastavit PIN kód nebo datum vypršení platnosti odkazu.
	Odeslat žádost o podporu	Přejděte na stránku Centra nápovědy Medit a odešlete žádost o podporu.

Order Box/In Box

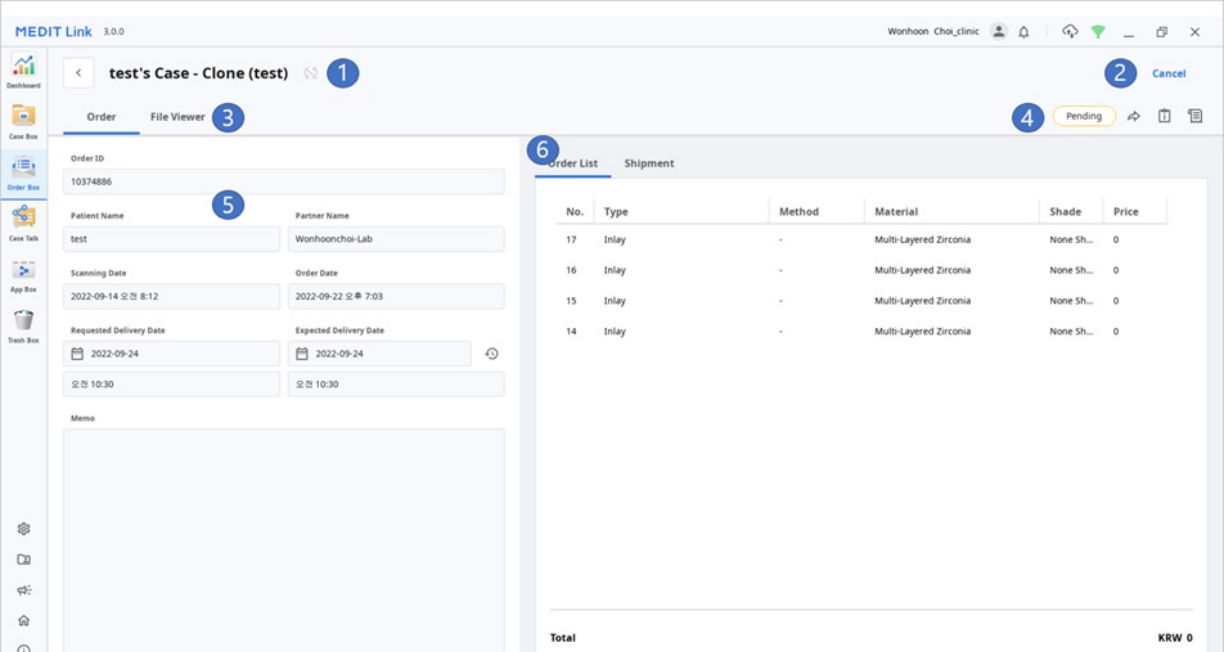

The screenshot displays the MEDIT Link 3.0.0 software interface. The main window is titled 'test's Case - Clone (test)'. It features a sidebar on the left with icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area has tabs for 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing fields for Order ID (10374886), Patient Name (test), Partner Name (Wonhoonchoi-Lab), Scanning Date (2022-09-14), Order Date (2022-09-22), Requested Delivery Date (2022-09-24), and Expected Delivery Date (2022-09-24). A 'Memo' section is also present. The right-hand panel shows the 'Order List' and 'Shipment' tabs. The 'Order List' tab is active, displaying a table with columns: No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The table lists four orders (14, 15, 16, 17) for 'Inlay' type, all using 'Multi-Layered Zirconia' material. The total price is listed as 'KRW 0'.

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení).
3	Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případě, připomínky & značky, atd.
5	Zobrazit podrobné informace o objednávce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky.
6	Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení.

Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace související s objednávkou, jako je číslo objednávky, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum dodání, připomínka a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, které určíte, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím Case Talk v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

iPoznámka

Služba Case Talk vyžaduje připojení k internetu.

MEDIT Link 3.0.0

Woonhoon Choi_clinic

Case Talk

Dashboard Case Box Order Box Case Talk App Box Trash Box

2018-01-01 ~ 2022-09-29 Case Talk Name Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanning Date	Shared Date ↓	Expiration Date
test's_Case_262 - Clone_2022-08-05 18:00:05	test	14, 15, 16, 17	2022-07-28 08:27	2022-08-05 18:00	2022-11-03 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:09	2022-10-23 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:02	2022-10-23 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - CL_2022-07-21 11:58:18	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:58	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - CL_2022-07-21 11:57:54	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:57	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - CL_2022-07-21 11:56:47	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:56	2022-10-19 23:59
test1's_Case_2022-07-14 14:45:16	test1	Maxilla	2022-07-06 10:36	2022-07-14 14:44	2022-10-12 23:59


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.

App Box

App Box poskytuje různé doplňkové programy, doplňující váš základní pracovní postup skenování a zvyšující produktivitu.

Medit Apps zahrnuje originální software, vyvinutý společností Medit a integrační aplikace s našimi partnery z různých odvětví digitální stomatologie, jako je 3D tisk, další CAD/CAM software, atd.

Stáhněte si dostupné aplikace z Medit Apps a Partner Apps, abyste mohli vytvářet dentální přístroje, analyzovat skenovací data, získat pomoc při konzultaci nebo zefektivnit váš pracovní proces.

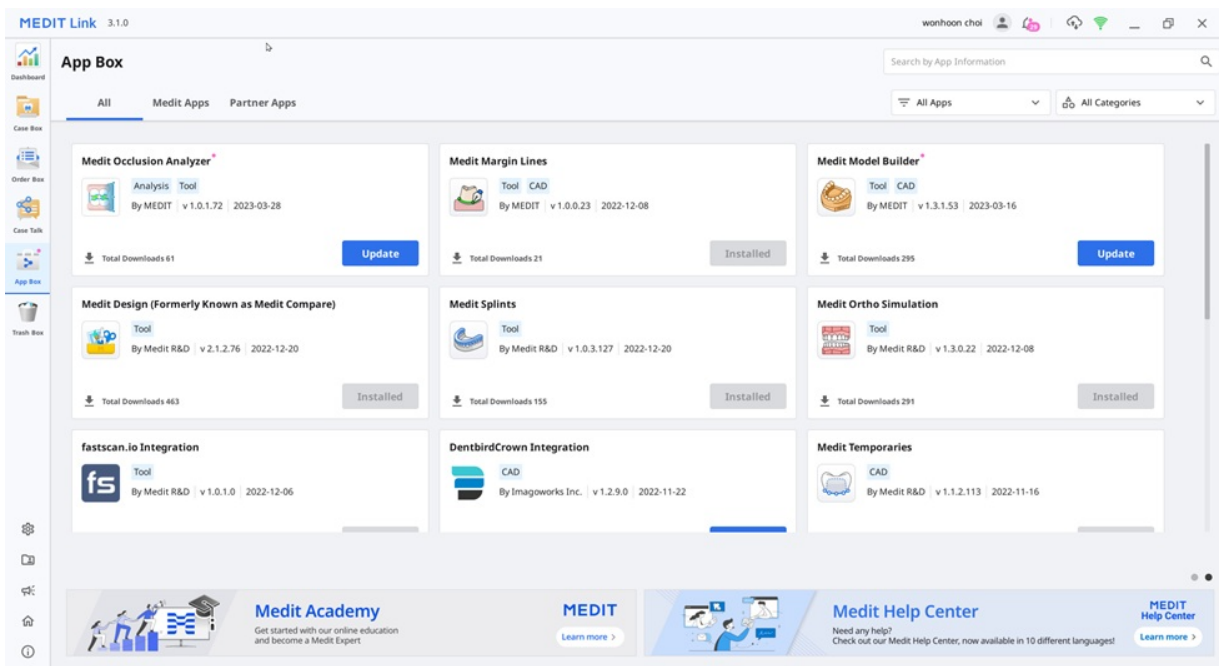


Trash Box

Trash Box dočasně ukládá odstraněné případy. Jakýkoli případ v Trash Box lze buď obnovit nebo trvale odstranit.

⚠️ Pozor

Data, smazaná z Trash Box, budou trvale smazána z vašeho počítače a serveru a nelze je obnovit.

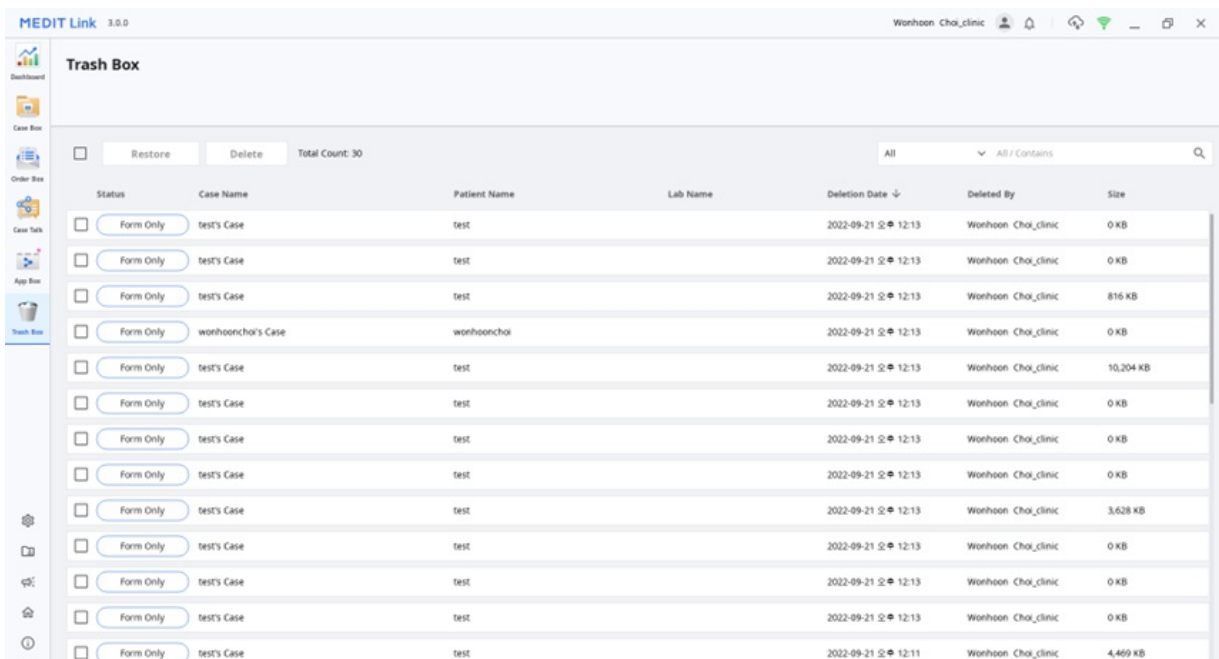

Nastavení

Viz aplikaci Medit Link > Nastavení pro podrobné informace o okně Nastavení.

Správa pacientů

V okně Správa pacientů můžete přidávat, upravovat, odstraňovat nebo slučovat pacienty.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试记录				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Přidat nového pacienta

1. Klikněte na „Nový pacient“.

New Patient

Patient Name*

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně Nový pacient a poté klikněte na „Uložit“.

Odstranit pacienta

iPoznámka

Pokud pro pacienta neexistují žádné případy, jen tehdy můžete pacienta smazat.

1. Vyberte pacienta, kterého chcete ze seznamu odstranit.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I.Abument2				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abument Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	sulkyadokif				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Klikněte na „Odstranit“.

Spojit pacienty

Všechny případy více pacientů můžete sloučit do jednoho pacienta.

1. Ze seznamu vyberte pacienty, které chcete sloučit.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	SCX-111				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2 1231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. Klikněte na „Sloučit pacienty“.

3. Vyberte cílového pacienta, do kterého chcete sloučit všechny případy.

4. Všechny případy budou sloučeny do cílového pacienta a informace o pacientovi pro cílového pacienta budou zachovány.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klikněte na „Použít“ pro pokračování ve sloučení.

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Přejít na webovou stránku Medit Link

Dostanete se na web Medit Link pod účtem, pod kterým jste aktuálně přihlášení.

Informace Medit

Můžete získat různé informace o používání Medit Link. Získejte přístup ke vzdělávacím a informačním zdrojům Medit, jako jsou Medit Academy, Medit Academy YouTube a Medit Centrum nápovědy.

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

Nastavení

Obecné

Poskytuje možnosti pro celkové nastavení systému.

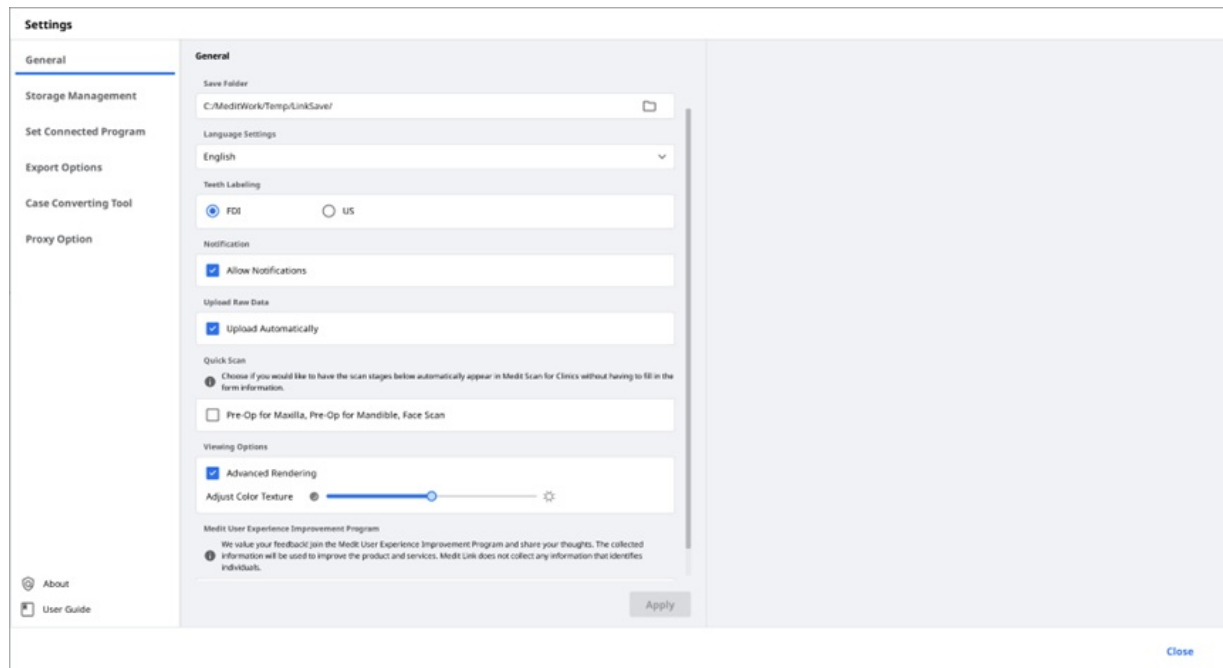

Složka uložení	Zadejte složku, do které se budou ukládat výsledky dat, generované z Medit Link a připojených programů.	
Nastavení jazyků	Vyberte jazyk programu.	
Značení zubů	Vyberte systém označování zubů mezi FDA a USA.	
Upozornění	Po zaškrtnutí budete dostávat upozornění na aktualizace programu.	
Nahrát surová data	Po zaškrtnutí se surová data automaticky nahrávají do cloudu. Pomáhá zálohovat původní data a provádět bezproblémové skenování při použití aplikace Medit Link se stejným účtem na jiném počítači. Platí pouze původní záloha dat do cloudu na data získaná v Medit Scan for Clinics.	
Rychlý sken	Zvolte, zda chcete, aby se níže uvedené fáze skenování automaticky zobrazovaly v Medit Scan for Clinics, aniž byste museli vyplňovat informace z formuláře. • Předoperační pro maxillu • Předoperační pro mandibulu • Sken obličeje	
Možnosti zobrazení	Pokročilé vykreslení	Po zaškrtnutí se 3D model zobrazí v živějším a realističtějším vykreslení.
	Upravit texturu barev	Upravíte jas 3D modelu. * Výsledné barvy se mohou mírně lišit od Medit Link, když stejná data otevřete v jiném softwaru.


**Program
zlepšování
uživatelské
zkušenosti
Medit**

Přidejte se k Programu zlepšování uživatelské zkušenosti Medit.

- Shromážděné informace používáme ke zlepšení našich produktů a služeb.
- Neshromáždíme žádné informace, které by identifikovaly konkrétního jednotlivce.

Správce úložiště

Zkontrolujte a spravujte místní a cloudový úložný prostor.

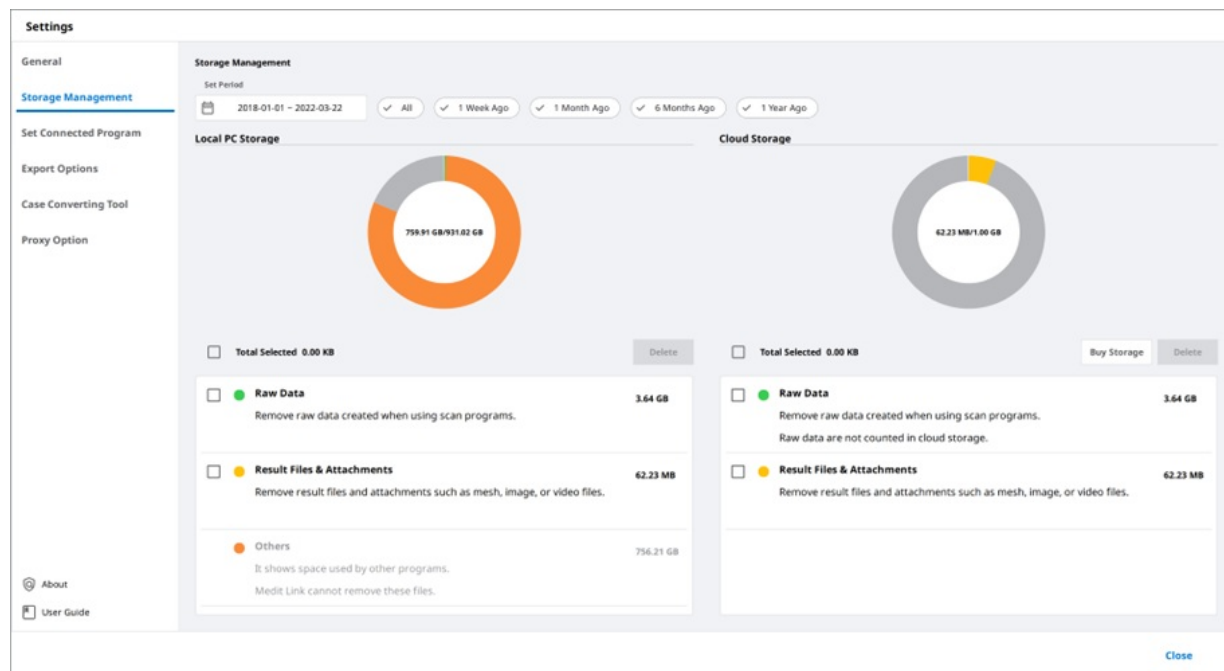

Nastavit období

Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci.

- Vše: Zobrazit všechny soubory.
- Před 1 týdnem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden týden od jejich vytvoření.
- Před 1 měsícem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden měsíc od jejich vytvoření.
- Před 6 měsíci: Podívejte se na soubory, pro které uplynulo 6 měsíců od jejich vytvoření.
- Před 1 rokem: Podívejte se na soubory, pro které uplynul jeden rok od jejich vytvoření.

Místní úložiště

Správa úložného prostoru počítače.

Surová data	Odeberte vybraná surová data z počítače. Pokud jsou již surová data nahrána do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Výsledky & Příloha	Odstraňte z počítače výsledky a soubory příloh, jako je mesh síť, obrázky a videa. Pokud jsou tyto soubory již nahrány do cloudu, můžete si je stáhnout a použít, kdykoli budete chtít.
Jiné	Zobrazit soubory používané k ovládání systému a dalších programů. Zobrazuje úložiště vašeho PC. Tyto soubory nemůžete odstranit z Medit Link.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z počítače.


Cloud úložiště

Správa úložného prostoru cloudu.

Surová data	Surová data nezabírají prostor v cloud úložišti, takže nebudou v pi-grafu. V případě potřeby však odtud můžete spravovat surová data, například je smazat, abyste ochránili soukromé informace pacienta, atd.
Výsledky & Příloha	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudovém úložišti. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Zakoupit úložiště	Pokud máte tarif Standard, přihlaste se k odběru Premium a rozšiřte své cloudové úložiště.
Odstranit	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo v úložišti.

Nastavit propojený program

Spravujte programy, které podporují integraci v Medit Link.

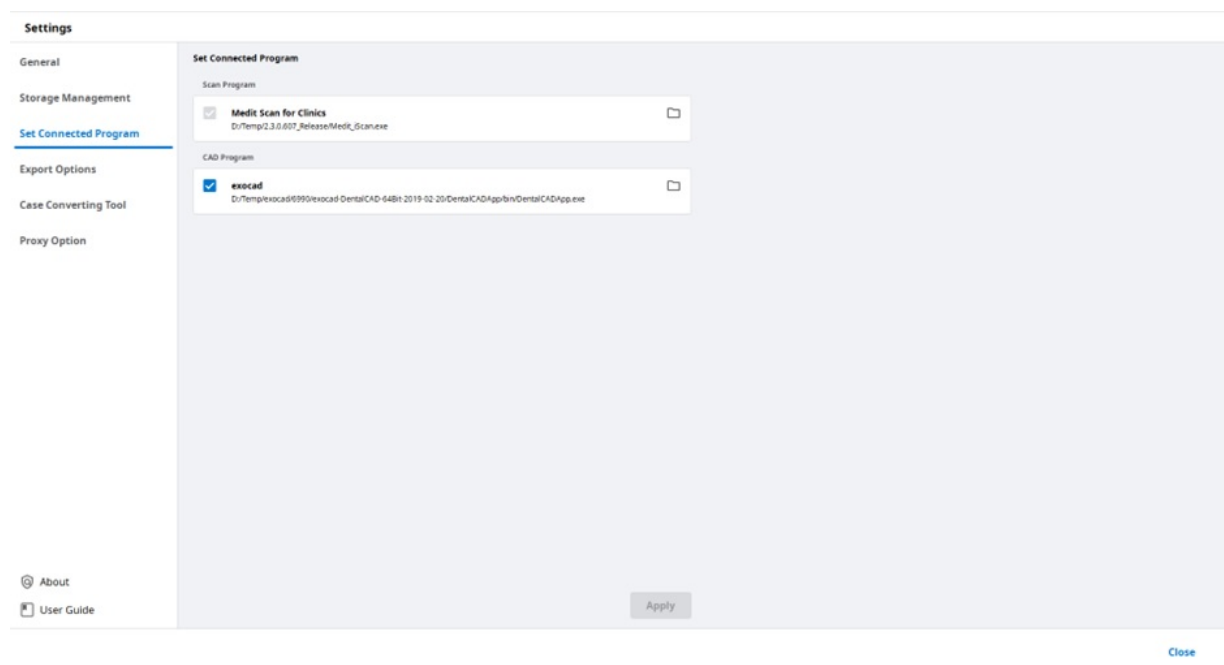

Můžete připojit následující programy:

	Účet kliniky	Účet laboratoře
Skenovací program	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.
CAD Program	exocad	exocad

!Poznámka

Integrace následujících služeb není k dispozici pro Medit Link pro Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Možnosti exportu

Nastavte způsob exportu souborů z Medit Link.

Typ CAD	Vyberte program CAD, který chcete použít pro navrhování. Program upraví výsledky na základě vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v návrhu bez jakéhokoli dalšího zarovnání os.
Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit výsledky.
Mesh formát	Specifikujte formát konečného souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat & Kombinovat	Zkomprimovat soubory: Zkomprimujte všechny výsledky do jednoho souboru. Kombinovat individuální struktury: Kombinuje všechny výsledky pro maxillu nebo mandibulu do jednoho souboru. Když používáte některé programy, které neumějí importovat a pracovat s více soubory, můžete je sloučit do jednoho a pracovat v těchto programech.
Možnosti, pokud stejná složka nebo soubor již existuje.	Vyberte výchozí akci pro případy, kdy v cílové cestě existuje stejná složka nebo název souboru. • Při exportu se vždy zeptat. • Exportovat nový soubor a přepsat stávající soubory. Aktuálně uložený soubor bude ztracen. • Vytvořit složku a exportovat soubory
Pravidlo pro název složky	Definujte pravidla pro vytváření názvu složky při exportu souborů. Na pojmenování složek se použijí nastavená pravidla a exportovaný soubor se uloží do vytvořené složky. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky

Pravidlo pro název souboru	Definujte pravidla pro název exportovaného souboru. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. - Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky - Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky
-------------------------------	---

Nástroj pro převod případů

Přesouvat případy mezi různými účty.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 박승재의 테스트	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55


Close

Jak používat Nástroj pro převod případů

1. Otevřete Medit Link a klikněte na „Nastavení“.

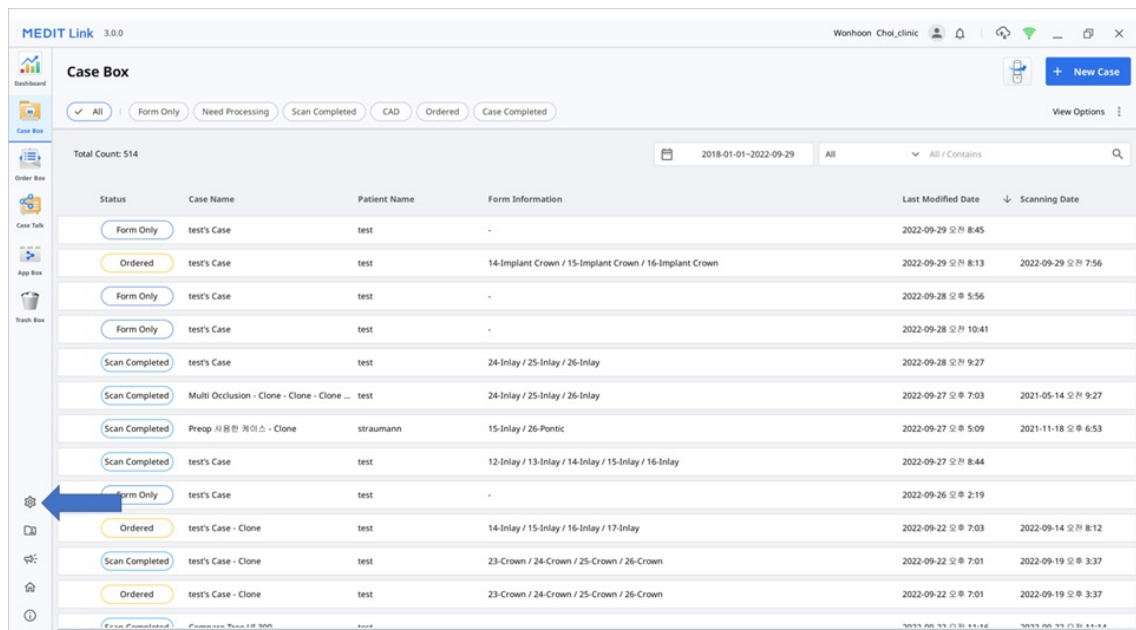


2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

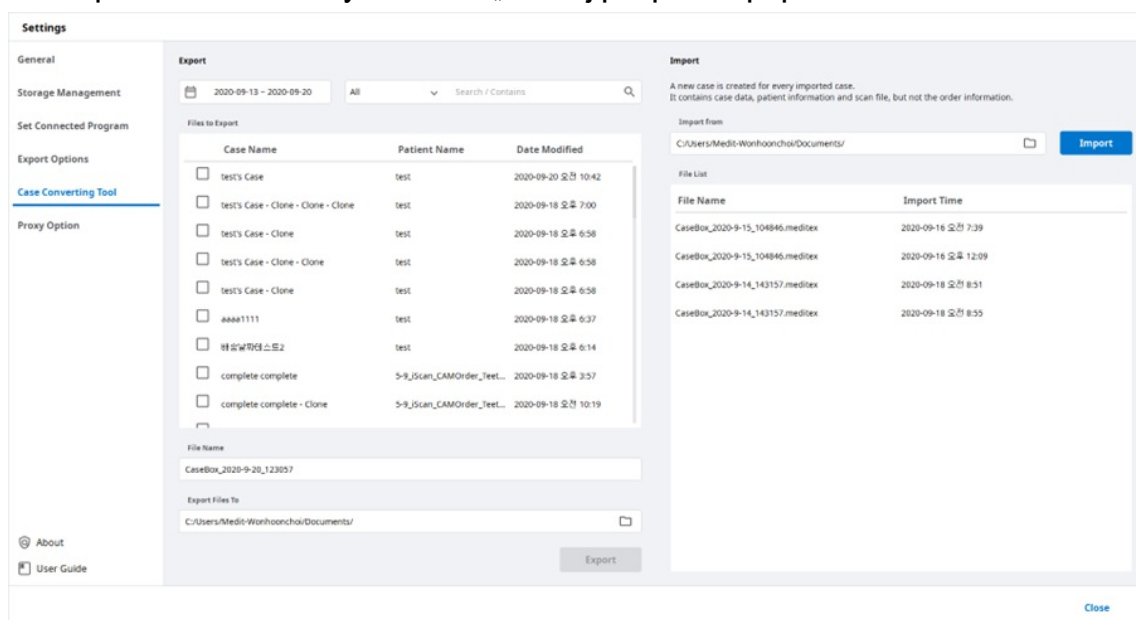

3. V sekci import klikněte na ikonu složky a vyhledejte v počítači soubor .meditex, který chcete importovat.


4. Klikněte na tlačítko „Importovat“ a zkontrolujte importovaný soubor v seznamu souborů níže.

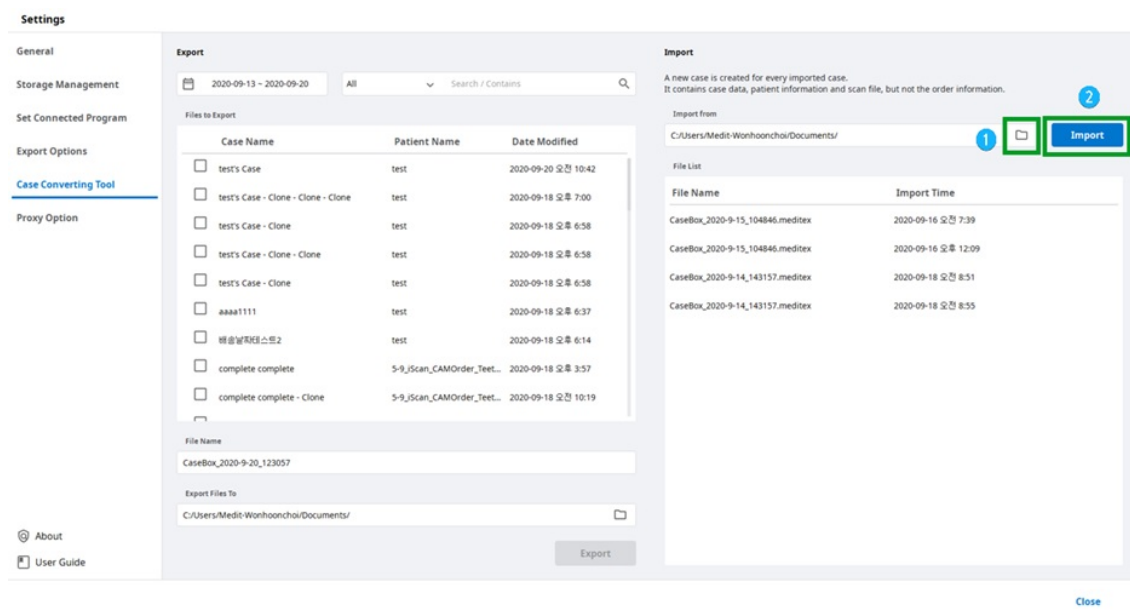

- Importovaný případ se také objeví ve vašem Case Box (Účet kliniky) nebo Work Box (Účet laboratoře).


Proxy možnosti

V některých omezených síťových prostředích můžete změnit nastavení sítě.

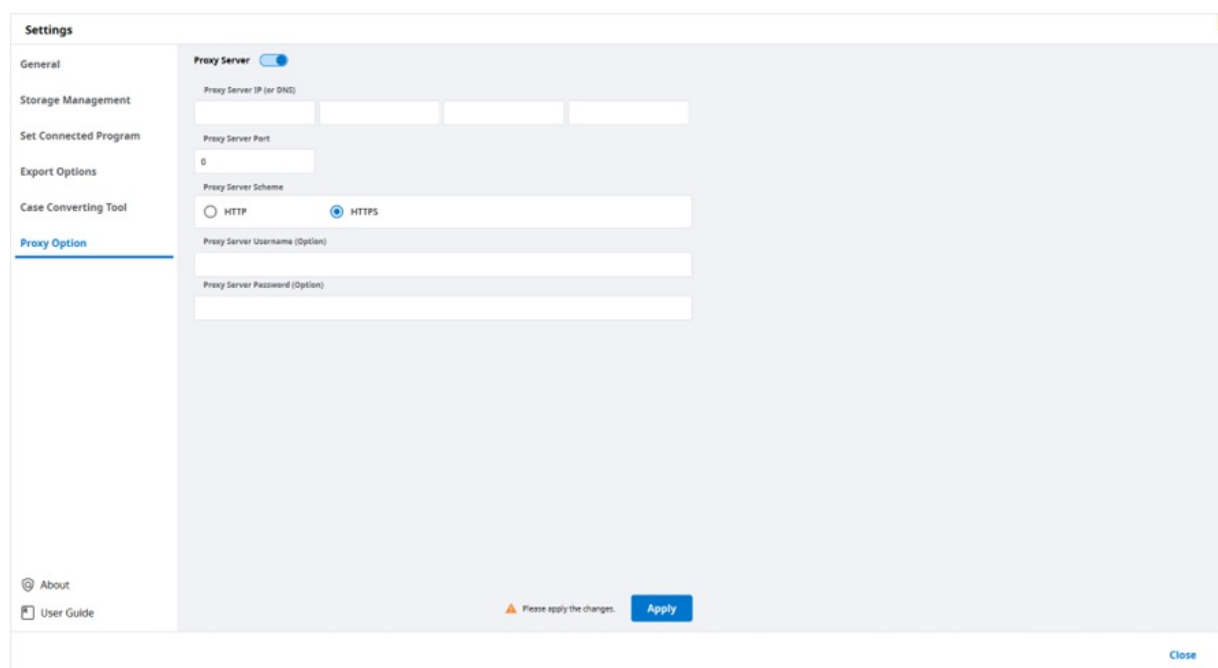

O programu

Zobrazit detailní informace o Medit Link.

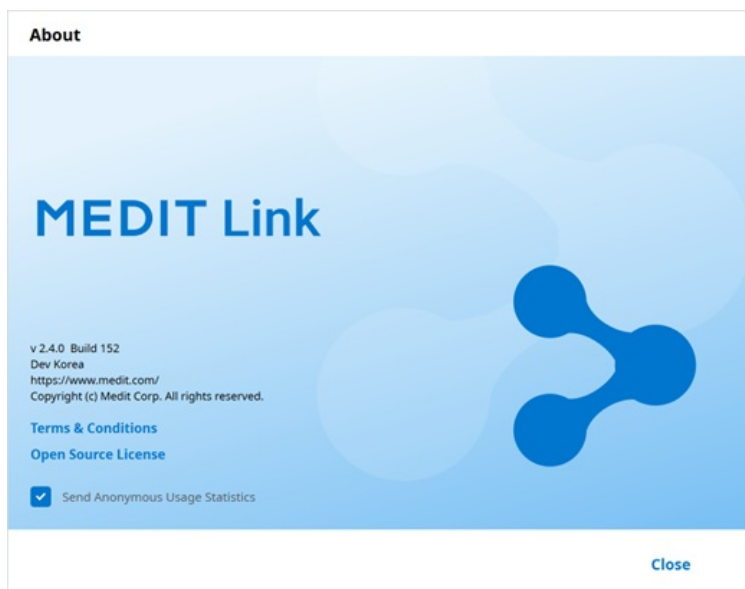

Uživatelská příručka

Získejte uživatelskou příručku pro Medit Link.

Otevření Uživatelské příručky vyžaduje připojení k internetu.

Prohlížeč souboru

File Viewer seskupuje a zobrazuje různá data, včetně dat získaných z programů, propojených s Medit Link a dat připojených uživateli.

Poskytuje základní funkce správy, jako je zobrazení/skrýtí dat, úprava opacity a mazání dat.

Podporuje náhledy souborů v následujících formátech:

- 3D data: STL, OBJ, PLY
- 2D obrázky: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video soubory: MKV, MP4, AVI, WMV

Datový strom

Všechna data pro daný případ můžete seskupit a zobrazit v datovém stromu. Můžete také zobrazit/skrýt data, upravit průhlednost a odstranit data ze stromu dat.

	Zobrazit / Skrýt	Data můžete zobrazit nebo skrýt.
	Opacita	Po kliknutí na jedno z dat v datovém stromu se zobrazí posuvník. Přesunutím posuvníku můžete upravit opacitu zobrazených dat. 
	Více	Klepnutím na ikonu Více zobrazíte další dostupné funkce.  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data, zobrazí pouze odpovídající data. • Skrýt: Skryje data. • Duplikovat: Zkopíruje data a přidá je do skupiny příloh. • Exportovat: Export vybraných souborů. • Přejmenovat: Změnit název dat. • Smazat: Smaže data.





iPoznámka

Data můžete přejmenovat v online režimu.

Nástroje pro ovládání modelu

3D ovládání modelu

	Panorámovát	Posunout model.
	Otočit	Otočit model.

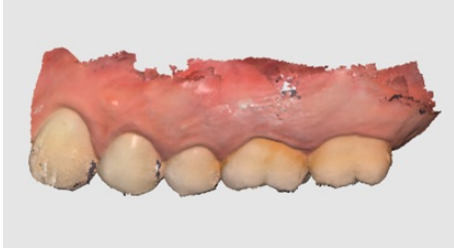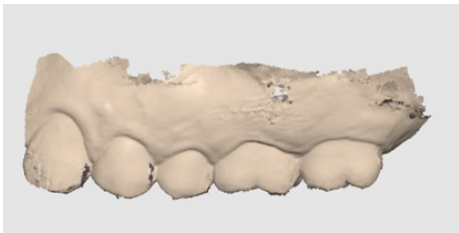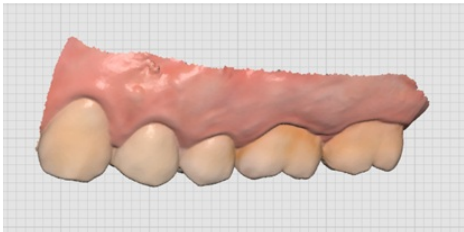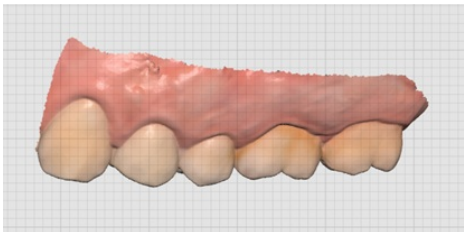	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicionuje do středu obrazovky.
	Režim Zobrazení modelu	Zapnout texturu
		Zobrazte data ve skutečných barvách textury. 
		Vypnout texturu
		Zobrazí data v jedné barvě. 
	Nastavení mřížky (mm)	Mřížka zapnuta
		Zobrazuje mřížku na pozadí. 
		Zapnout potah
		Překryjte model mřížkou. 
		Mřížka vypnuta
		Skryje mřížku.

Ovládání 2D obrázků


	Další/Předchozí obrázek	Pohybuje se mezi obrázky.
	Upravit	Upravit obrázek.
 	Okno Stažení/Vložení	Okno obrázku můžete odpojit a upravit do požadované polohy. Můžete změnit velikost okna. Když je okno obnoveno do původního umístění, vrátí se do výchozí velikosti.

Funkční nástroje

Zachycení obrázku a Poznámka


Zachyťte aktuální obrazovku jako 2D obrázek, kreslete na něj nebo přidejte poznámky.

Obrázek můžete uložit jako soubor s vašimi poznámkami a odeslat jako referenci.

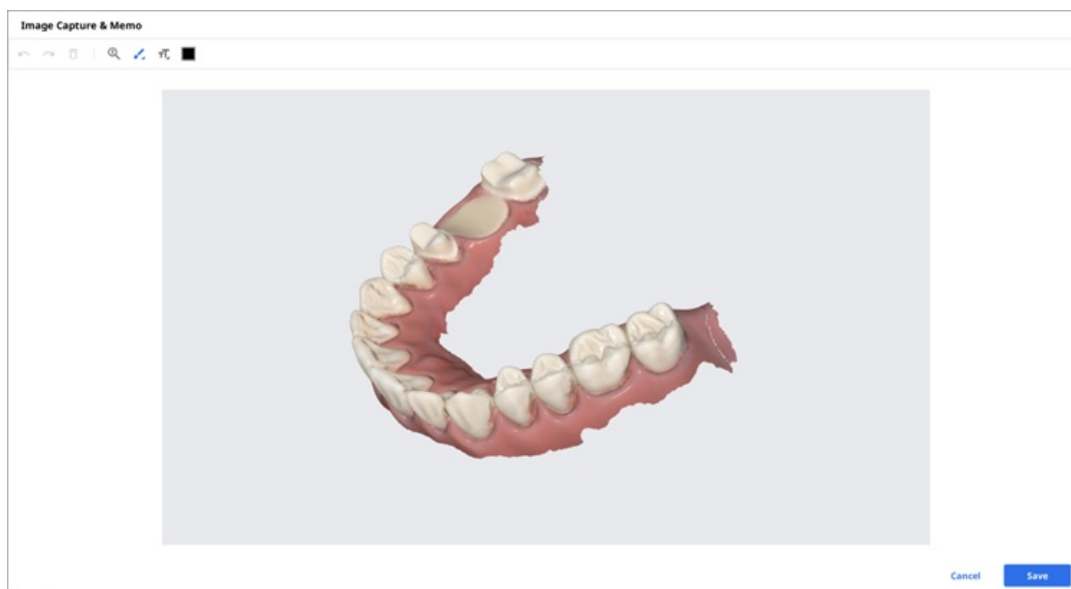

Ortho zachycení


Snímá snímky v aktuálním směru pohledu a také vrchní/spodní/levou/pravou stranu z aktuálního směru pohledu.

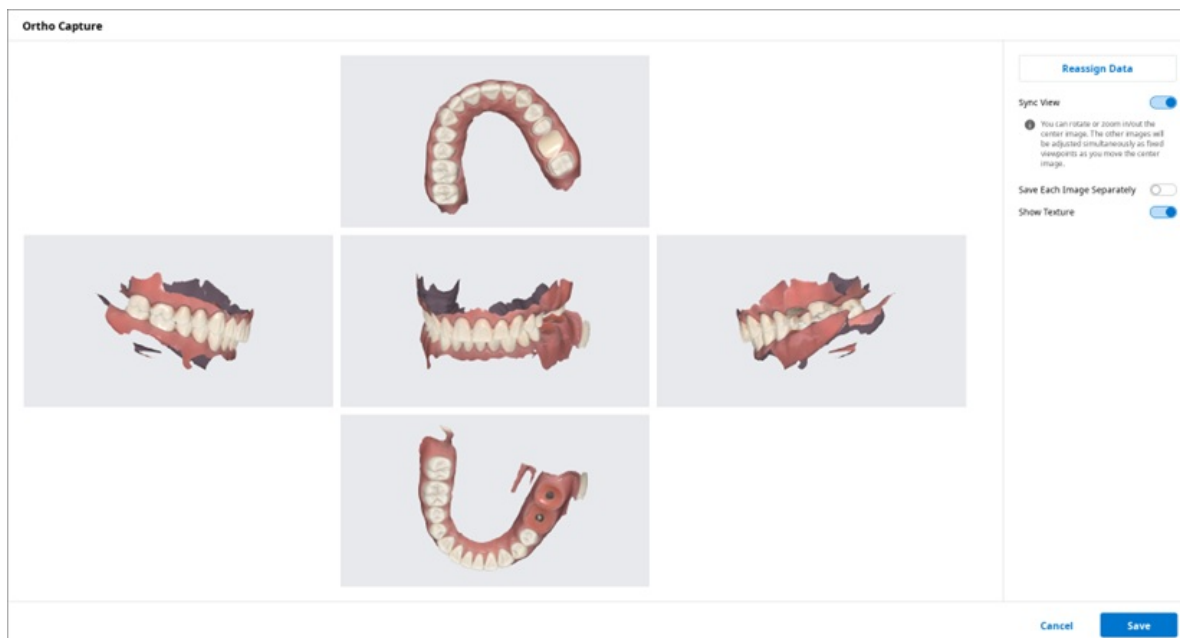

Zobrazení synchronizace


Když je zapnutý, můžete otáčet nebo přibližovat/oddalovat středový obrázek. Když budete pohybovat středovým obrazem, ostatní obrázky budou upraveny současně jako pevná zorná pole.

Při vypnutí všechny obrázky můžete panorámovat, otočit nebo přiblížit/oddálit jednotlivě.

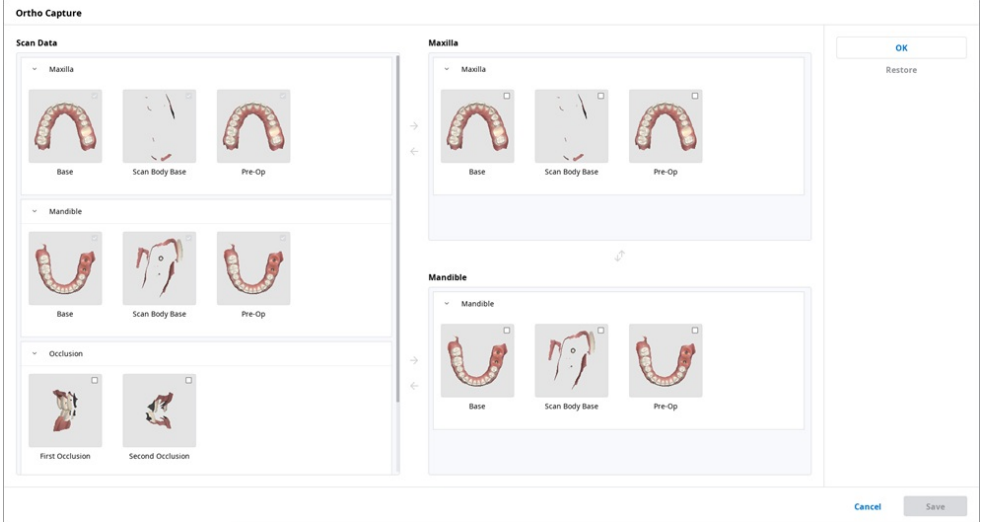Uložit každý obrázek zvlášť	Uložte každý obrázek ve vysokém rozlišení.
Zobrazit texturu	Zapnout/vypnout texturu modelu.
Znovu přiřadit data	Data pro maxillu/mandibulu změníte pomocí funkce Znovu přiřadit data. Změněná data můžete použít k vytvoření a využití výsledných snímků z Ortho zachycení.  • Skenovací data: Jsou zobrazena všechna skenovací data pro daný případ. • Maxilla: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro maxillu. • Mandibula: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro mandibulu.


Vyplnit mezery

Vyplnit mezery v datech 3D sítě.

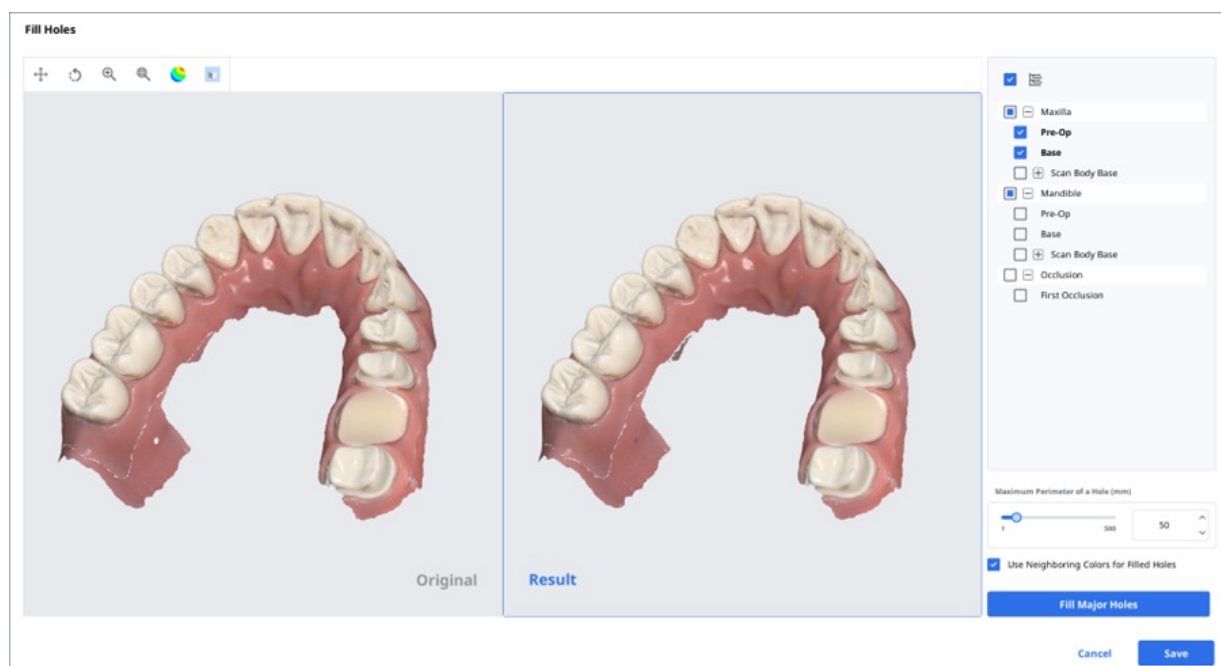

Ořezávání


Ořezávání poskytuje různé nástroje pro úpravu dat.

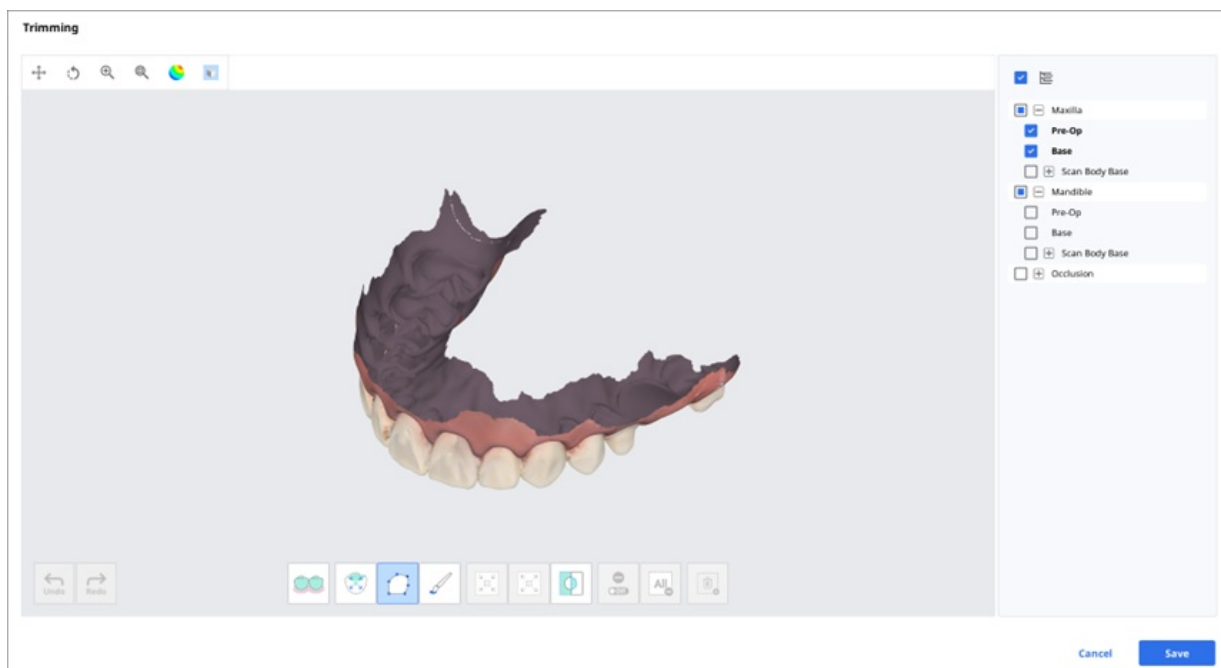

Vybraná 3D mesh data lze upravovat pomocí různých nástrojů, umístěných ve spodní části okna.

Výběr		Chytrý výběr zubů	Automaticky vybere všechny zuby oblouku, no vynechá části dásně. Poznámka Tato funkce je k dispozici pouze pro skenovaná data, která byla získána z Medit Scan for Clinics se zapnutou možností „Použít GPU“.
		Chytrý výběr jednoho zubu	Automaticky vyberete oblast jednoho zubu, no vynechají se části dásní. Klikněte, stiskněte a přetáhněte myš na konkrétní zub.
		Výběr vícebodové linie	Vybere všechny entity ve tvaru vícebodové křivky, nakreslené na obrazovce.
		Výběr štětce	Vyberte všechny entity na volně nakreslené linii na obrazovce. Bude vybrána pouze přední strana obličeje. Štětec má tři různé velikosti.
Úprava vybrané oblasti		Zmenšit vybranou oblast	Zredukuje vybranou oblast každým zmáčknutím tlačítka.
		Rozšířit vybranou oblast	Rozšíří vybranou oblast při každém stisknutí tlačítka.
		Invertovat vybranou oblast	Invertovat výběr.
Zrušení výběru		Výběr/Zrušení výběru	Při zapnutí zrušíte výběr oblasti pomocí různých nástrojů.
		Vymazat kompletní výběr	Vymaže všechny vybrané oblasti.
		Smazat vybranou oblast	Vymažte data z vybrané oblasti.

1. Vyberte oblast, kterou chcete oříznout, pomocí nástroje výběru oblasti.

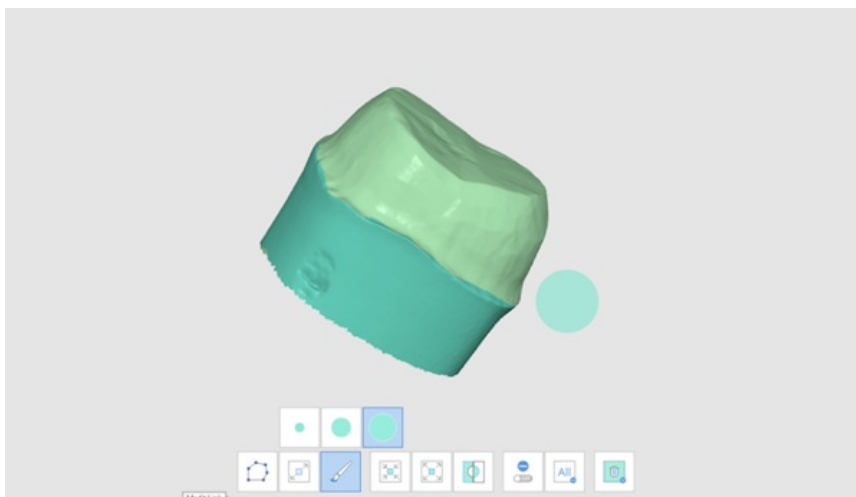


2. **Poznámka**


Nástroj Ořezání křivkou vybere všechny entity ve tvaru křivky, nakreslené na obrazovce, zatímco Ořezání štětcem vybere pouze data přední strany obličejů.

3. Pomocí následujících tří nástrojů můžete výběr invertovat, zmenšit nebo rozšířit.


- Invertovat vybranou oblast

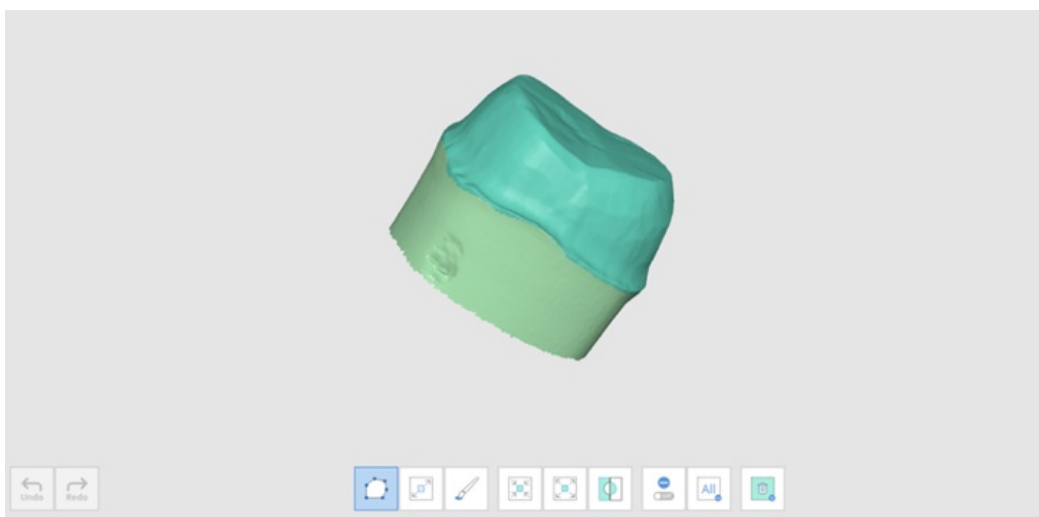

- Zmenšit vybranou oblast

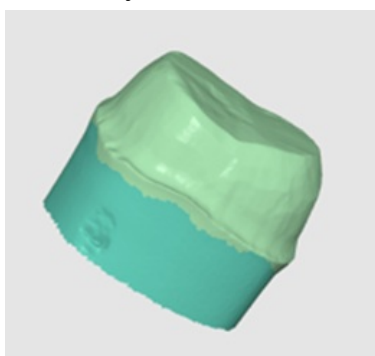


- Rozšířit vybranou oblast

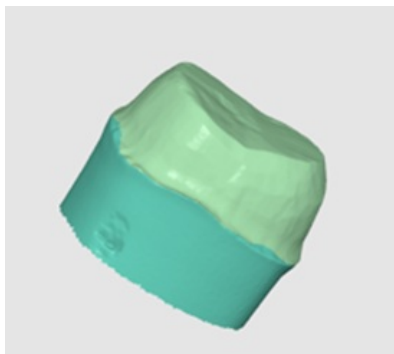


4. Označení vybraných oblastí můžete zrušit pomocí nástroje Smazat vybranou oblast.




Optimalizovat zarovnání okluze

Optimalizovat zarovnání okluze. Můžete si vybrat cílová data a upravit zarovnání okluze.

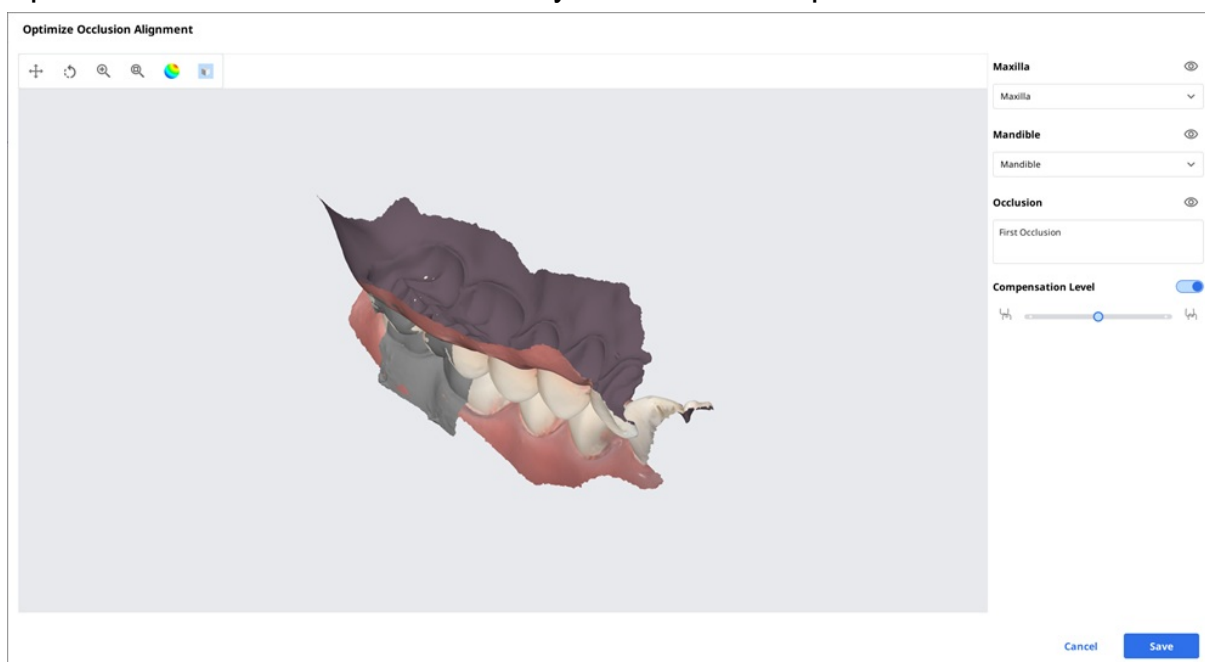


Úroveň kompenzace

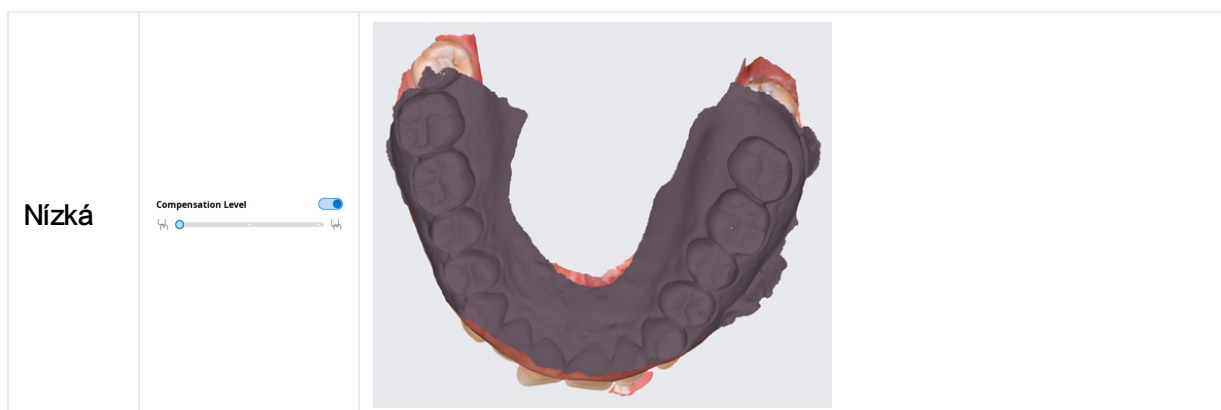

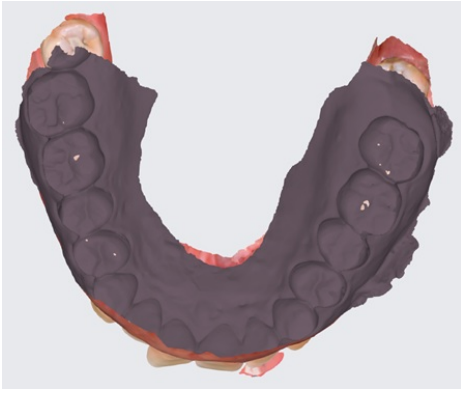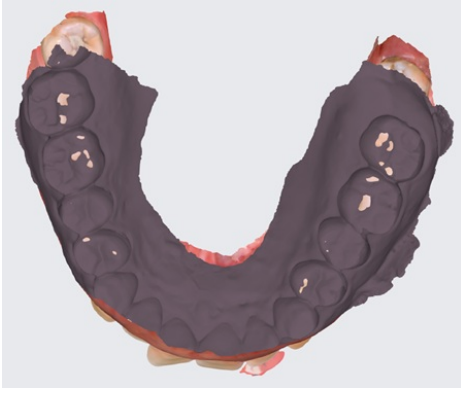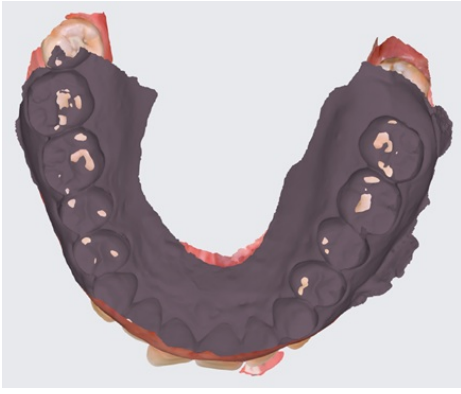Střední	Compensation Level 	
Vysoká	Compensation Level 	
Vypnout	Compensation Level 	

Pohyb mandibuly

Můžete si přehrát pohyby mandibuly, zaznamenané v Medit Scan for Clinics, abyste viděli dynamické okluzní kontakty mezi horními a dolními denticemi.

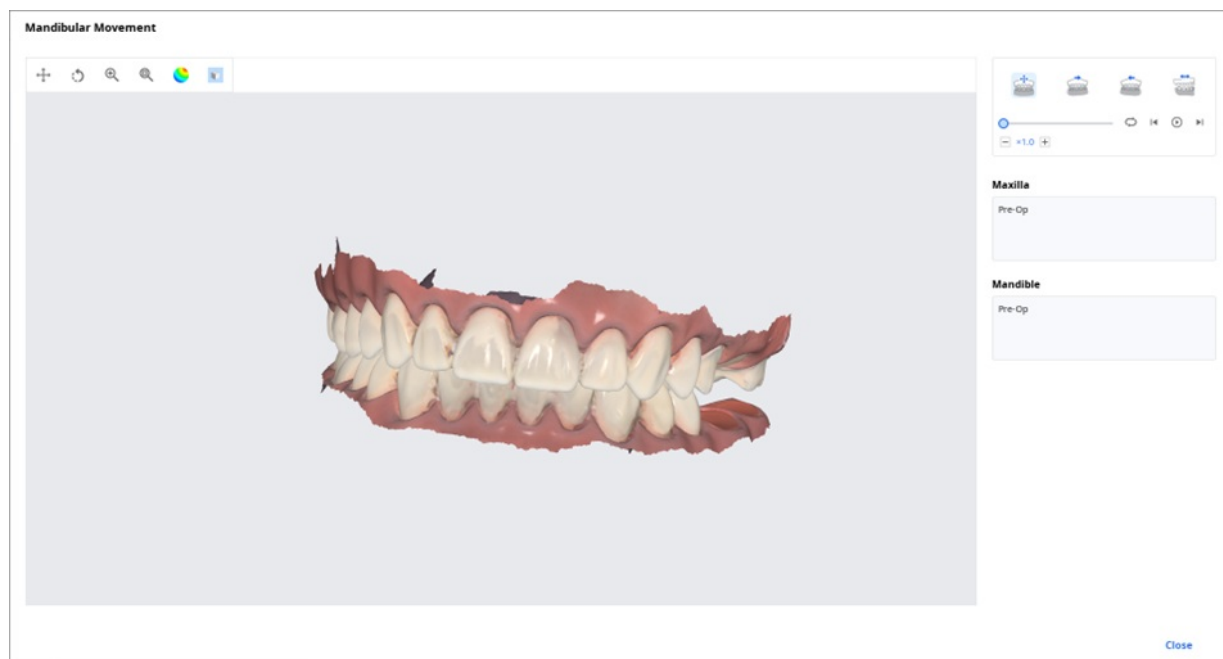

	Volný pohyb	Přehrát záznam volného pohybu mandibuly.
	Levý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doleva.
	Pravý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doprava.
	Protruzivní pohyb	Přehrajte záznam mandibuly, pohybující se vpřed.

Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů

Z aplikace Medit Scan můžete získat více výsledků dat okluze.

Medit Link poskytuje funkci pro správu výsledků prostřednictvím „Prohlížeče souborů“.

Jak spravovat více výsledků


Když uživatel získá více výsledků okluze z Medit Scan for Clinics, Medit Link nabízí možnost vybrat konkrétní výsledek.

Seznam výsledků je uveden podle názvu a můžete vybrat pouze jednu položku.

Vybraný model se zobrazí v „Datovém stromu“ a „Oblasti zobrazení modelu“.



Seznam můžete sbalit a změnit položku využitím ikon šipek.

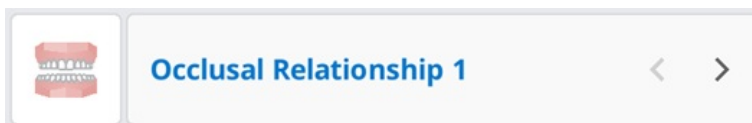

Možnosti zobrazení

Můžete změnit Možnosti zobrazení s cílem přizpůsobit rozvržení seznamu případů v Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtry stavu

Zobrazí nebo skryje každý filtr, představující stav případu. Skryté stavové filtry se nezobrazují na obrazovce v Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Pomocí zobrazených filtrů snadno najdete případ, který potřebujete.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered



Case Completed



Cancel

Apply

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27

- Kliknutím na stav, který chcete zobrazit, zobrazíte pouze případy v tomto stavu.
- Můžete vybrat více stavů najednou.

Dostupné možnosti filtrování pro každý box:

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	Vše/Čekající/Zrušeno/Odmítnuto/Přijato/Odesláno/Případ dokončen
In Box	Vše/Čekající/Zrušeno/Odmítnuto/Přijato/Připraveno/Odesláno/Případ dokončen
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Není podporováno

Položky tabulky

Vyberte položky, které se mají zobrazit v seznamu případů v Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Můžete změnit pořadí položek tabulky nebo upravit šířku sloupce tabulky v zobrazení do seznamu, abyste co nejlépe optimalizovali tuto funkci pro uživatelské prostředí.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed


Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Typ zobrazení

Změňte typ zobrazení mezi Zobrazením galerie a Zobrazením do seznamu v Case Box.

Zobrazení galerie

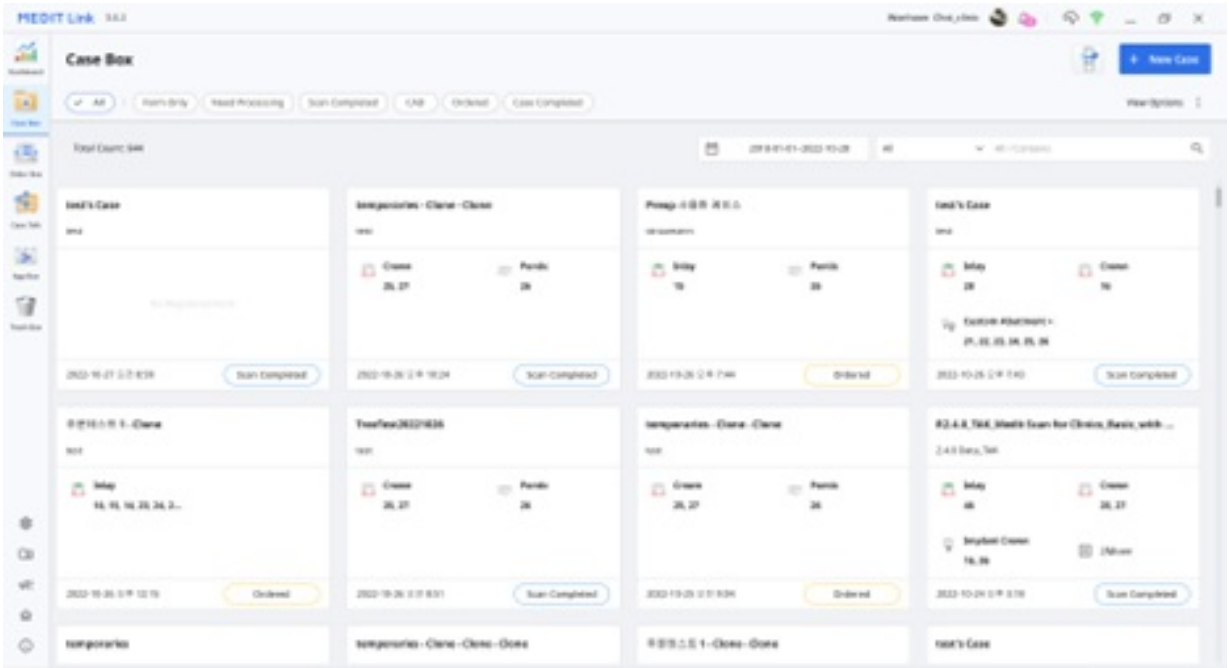

1

Medit Link2.3.0 Release

2

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

3

Implant Crown Zirconia

11, 12, 13, 14,...

Inlay Zirconia

3, 4, 5, 6, 7

Crown Metal

18, 19, 20, 21,...

1

4

2020-09-14 오전 7:43

5

Scan Completed

1	Název případu
2	Jméno pacienta a datum narození
3	Informace formy
4	Datum skenování
5	Stav případu

89

Zobrazení do seznamu

Status	Case Name	Patient Name	Appointment Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	Health Case	100	--	2022-10-28 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	100	20-Case / 20-Case / 20-Case	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	100	10-Case / 10-Case / 10-Case	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Ordered	Health Case	100	10-Case / 10-Case / 10-Case	2022-10-27 17:13:02		Winnipeg Health
Scan Completed	Health Case	100	10-Case / 10-Case / 10-Case	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	100	10-Case / 10-Case / 10-Case	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	100	--	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	

Seskupení

Vyberte možnost seskupení pro klasifikaci a změnu uspořádání případů v seznamu podle vybrané možnosti.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone v

☒ None

☐ Patient Name

☐ Order Date

☐ Scanning Date

SortingLast Modified Date >

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti seskupení:

Box	Seskupení
Case Box	Žádný
	Jméno pacienta
	Datum skenu
	Datum objednání
	Žádný

Order Box	Datum skenu
	Datum objednání
	Požadované datum dodání
In Box	Žádný
	Datum objednání
	Požadované datum dodání
Work Box	Žádný
	Požadované datum dodání

iPoznámka

Možnosti seskupování a třídění nejsou k dispozici v Trash Box a Case Talk.

Seřazení

Výběrem možnosti třídění změníte pořadí případů v seznamu podle vybrané možnosti.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting

Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti třídění:

Box	Seskupení	Seřazení
Case Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum skenu / Datum objednávky / Název laboratoře
	Jméno pacienta	Poslední změna / Datum skenování / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum skenu	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum skenu / Název laboratoře
	Žádný	Jméno pacienta / Datum skenu / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře

Order Box	Datum skenu	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenu / Požadované datum dodání / Název laboratoře
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum skenu / Datum objednávky / Název laboratoře
In Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenu / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta/ Datum objednávky / Název kliniky
Work Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta/ Poslední změna / Název kliniky

iPoznámka

Možnosti seskupování a třídění nejsou k dispozici v Trash Box a Case Talk.

Filtrování a vyhledávání


Filtrovat podle data

Filtrujte a zobrazte případy, které byly naposledy upraveny během nastavené doby.

1. Klikněte na filtr doby.



2. Vyberte dobu trvání ze seznamu.

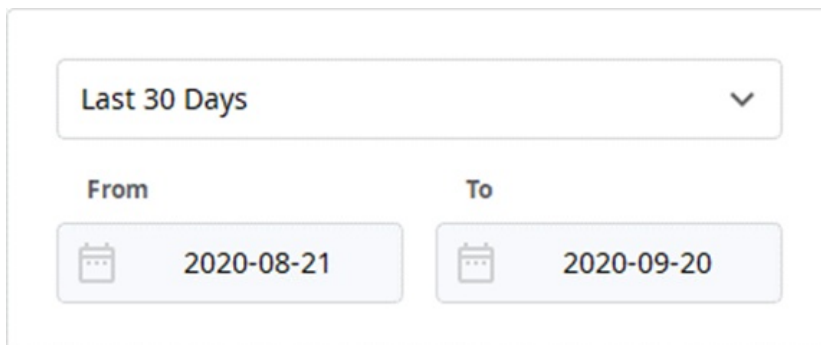


- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, naposledy upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené včera.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v předchozích 7 dnech, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v posledních 30 dnech, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Rozšířené možnosti vyhledávání

Využijte možnosti vyhledávání k rychlému nalezení požadovaných informací.

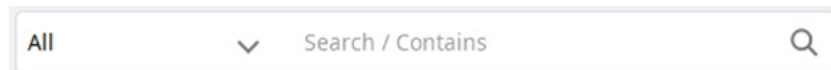

Pro každé pole jsou k dispozici následující Vyhledávání kritérií:

Case Box	Vše, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Informace formy, Název laboratoře
Order Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře, ID objednávky
In Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky
Work Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Informace formy, Název kliniky, ID objednávky

Case Talk	Název Case Talk (obsahuje), Jméno pacienta (rovná se)
Trash Box (Klinika)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název laboratoře, Smazáno kým
Trash Box (Laboratoř)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, Smazáno kým

Můžete vybrat Kritéria vyhledávání a vybrat mezi logikou Obsahuje a Rovná se.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ

Vytváření případů

Vytvořte případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Zadejte základní informace, jako je jméno pacienta a název případu.
 - Pokud zadáte jméno, které není na seznamu pacientů, bude přidán nový pacient.
 - Pokud zadáte jméno, které je v seznamu pacientů, můžete jej vybrat ze seznamu.
 - Pokud registrujete případ pro existujícího pacienta, klikněte na ikonu Seznam pacientů a vyberte existujícího pacienta.



- V dialogovém okně Seznam pacientů můžete zaregistrovat nového pacienta nebo upravit informace o existujícím pacientovi.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contents

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worham Chis				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	0000				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	13				0	2020-08-20		

Close Select

3. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Stiskněte „Registrovat & Skenovat“ pro dokončení registrace případu a pokračujte ve skenování.
 - **Registrovat:** Budete přesměrováni na hlavní stránku. Je to užitečné při registraci

více případů.

- **Registrovat&Skenovat:** Přejděte na záložku Formulář a zaregistrujte informace formy pro daný případ.

Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Zadejte nebo vyberte název kliniky.
3. Zadejte jméno pacienta a název případu. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Zadejte očekávané datum dodání s ohledem na datum dokončení práce.
5. Po registraci případu budete přesměrováni na hlavní stránku.

Úprava případů

Upravit případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Klikněte na ikonu „Hledat“ a změňte jméno pacienta. Všimněte si, že jej nelze upravovat přímo; místo toho můžete najít jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího a upravit informace o pacientovi ze seznamu.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Zkontrolujte jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího pacienta.
4. Pro vytvoření nového pacienta stiskněte tlačítko „Nový pacient“ .
5. Pomocí tlačítka "Upravit" můžete změnit registrované informace o pacientovi.
6. Klikněte „Použít“ pro dokončení procesu.

Upravit případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Po dokončení úprav stiskněte „Použít“.

Poznámka

Nemůžete upravovat informace o případech, přijatých prostřednictvím objednávky v In Box.

Klonování případů

Klonování případu v Case Box (Klinika)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Budete dotázáni, jaký druh informací byste chtěli naklonovat do nového případu.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Vyberte, zda chcete replikovat pouze informace formy nebo data všechna dohromady.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.

Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)

- Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



- Duplikujte všechna data pro vytvoření nového případu.
- Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.


Odstranění případu

Smazat případ (Klinika a Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Smazat“.



2. Kliknutím na „OK“ případ odstraní.

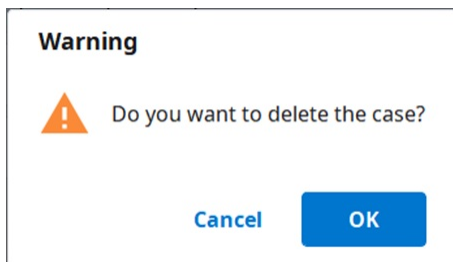

3. Odstraněné případy se přesunou do Trash Box a v případě potřeby je lze obnovit.

Informace formy

Informace formy můžete zadat na základě připojeného programu a typu léčby.

Zadané informace budou použity jako základní informace pro práci na skenování nebo CAD programech a objednávání.

Registrace informací formy v Case Box

Zadejte je na záložce Formy

1. Vyberte, zda chcete zadávat informace o léčbě podle zubů nebo podle oblouku.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
3. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Zadejte je na záložce CAD

1. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
2. Zvolte číslo zubu/oblouku/číslo matrice die.
3. Definujte nastavení pro detailní možnosti a operace CAD.
4. Klikněte na „OK“ pro uložení nastavení.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
5. Klikněte na „Uložit“ pro uložení vaší registrace

Registrace informací formy v Work Box

Zadejte je na záložce formy

1. Vyberte skenovací program, který chcete použít.
2. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody se mohou lišit v závislosti na zvoleném skenovacím programu.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zuby	O	O
Oblouk	O	O
Flexibilní Multi-die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Vyberte pro skenovací proces čísla zubů, oblouků nebo matic die.
5. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.


6. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Zadejte je na záložce CAD

1. Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování:
Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
2. Zvolte číslo zubu/oblouku/číslo matrice die.
3. Definujte nastavení pro detailní možnosti a operace CAD.
4. Klikněte na „OK“ pro uložení nastavení.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.
5. Klikněte na „Uložit“.

Připojení zubů do můstku

Když je stejný materiál aplikován na více sousedních zubů, můžete spojit více zubů do můstku. Kliknutím na ikonu můstku vedle vybraných zubů je spojíte nebo odpojíte.

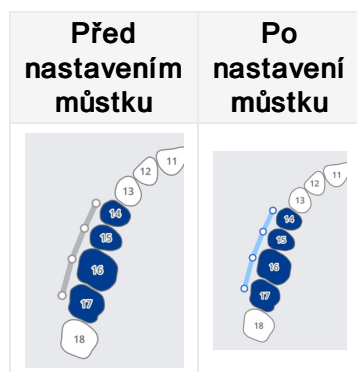

Nastavení možností skenování

V závislosti na programu, se kterým pracujete, jsou k dispozici různé možnosti skenování.

Vybrané možnosti skenování jsou obsahem každého skenovacího programu.

Medit Scan for Labs

Obecné možnosti

	Sousedící zub	Označte připravené a sousední zuby, předejte tyto informace skenovacímu programu.
	Antagonista	Automaticky označí antagonistu a předá tyto informace skenovacímu programu.
	Artikulátor	Zobrazí možnosti pro výběr artikulátoru v skenovacím programu.
	Značka pohybu	Umožňuje použít v skenovacím programu strategii skenování „Pohyb čelistí“.

Možnosti podle zubů

	Skenování	Umožňuje nastavit strategii skenování v programu skenování pro skenování samotné.
	Předoperační sken	Umožňuje nastavit strategii skenování předoperačního modelu v samotném programu skenování.
	Wax-Up sken	Umožňuje nastavit strategii při skenování wax-upu v skenovacím programu.

Přidání k Oblíbeným

Produkt můžete rychle vybrat tak, že jej zaregistrujete jako oblíbený.

Seznam registrovaných oblíbených položek je spravován jako šablona a lze jej sdílet prostřednictvím funkcí exportu a importu.

Přidat do Oblíbených

1. Zvolte číslo zubu.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Typ – Metoda – Materiál – Odstíny lze zaregistrovat jako oblíbené, i když nejsou vybrány všechny z nich.
3. Klikněte na ikonu „Hvězdička“.

4. Kombinace vybraných parametrů, s výjimkou čísla zubu, je uvedena ve vašem vyhledávacím oblíbeném seznamu.

Spravujte oblíbené šablony

Můžete registrovat, spravovat a sdílet různé typy šablon.

Přidat	Přidá novou šablonu.
Přejmenovat	Přejmenuje aktuální šablonu.
Odstranit	Smaže aktuální šablonu.
Exportovat	Exportuje aktuální šablonu do souboru.
Importovat	Importuje soubor šablony.

Práce na skenování/CAD

Proces skenování

Na základě zadaných informací pokračujete ve skenování.

1. Zadejte/uložte informace o léčbě a vyberte potřebné možnosti skenování.
2. Klikněte na tlačítko „Skenovat“ v pravém horním rohu okna.

Proces CAD

Medit Link je integrován s exocad.

CAD	Registrace informací o léčbě	Potvrzení informací o léčbě	Přímé provádění v CAD	Import výsledků CAD zpět do Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. V Nastavení > Nastavit propojený program můžete propojit CAD program dle vašeho výběru ze seznamu.
2. Zadejte/uložte informace o úkolu a možnosti návrhu na záložce CAD.
3. Klikněte na tlačítko „CAD“ v pravém horním rohu okna.
4. Propojený CAD program se spustí a data se odešlou automaticky.
5. Uložte výsledky po provedení CAD.

Poznámka

Medit Link pro Mac nepodporuje funkci propojení s CAD.

Získání souborů s výsledky

Export Scan Result Files

Kromě sdílení výsledků s partnery prostřednictvím objednávek - Medit Link vám umožňuje ukládat vaše výsledky v požadovaném formátu souboru pomocí funkce exportu.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export


Exportovat soubory do	Specifikuje cestu, kam chcete uložit výsledky.
Název složky	Systém vytvoří novou složku a uloží do ní všechny výsledky. Výchozí název složky je nastaven pravidlem pro pojmenování. But you can change the folder name directly. You can define the naming rule through Settings > Export Options > Rules for Folder Name
Název souboru	Sets the file name for the result. The naming rule sets the default file name. But you can change the file name directly. You can define the naming rule through Settings > Export Options > Rules for File Name
Typ CAD	Select the CAD program to be used for your design program. Medit Link will adjust the files based on this selection, allowing you to proceed with the design without any additional axis alignment.
Mesh formát	Určuje formát souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určuje formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat soubory	Zkomprimuje všechny výsledky do jednoho souboru.
Kombinovat individuální struktury	Kombinuje výsledek maxilly nebo mandibuly s jednotlivými zuby. Užitečné, když není možné importovat do programu několik souborů.

Exportovat všechny okluzní vztahy	Když je z aplikace skenování vygenerováno více výsledků okluze, můžete exportovat všechny tyto výsledky okluze najednou.
Uložit Info o případě jako PDF	Uložte informace o případě jako pdf s výsledkem.

Exportovat vybrané soubory

Medit Link poskytuje z rozbalovací nabídky prohlížeče souborů funkci exportu. Pomocí této funkce můžete vybrané soubory snadno vyexportovat.

1. Klikněte na ikonu „Menu“ vedle skupiny dat nebo entity v datovém stromu prohlížeče souborů.
2. Poté klikněte na „Exportovat“.

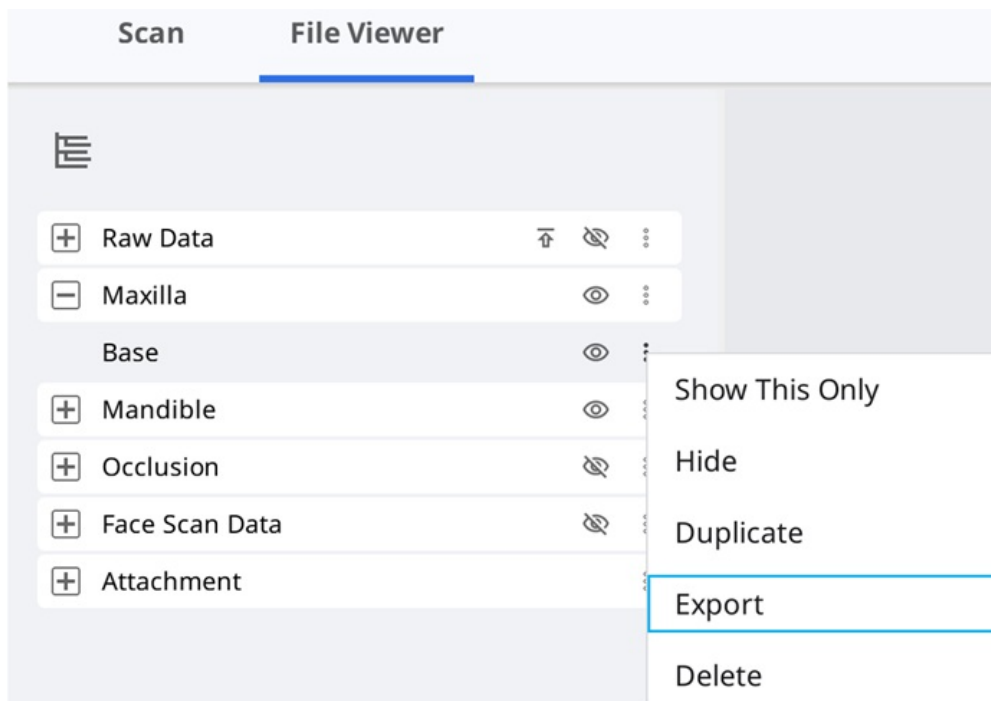

3. V dialogovém okně exportu se zobrazí pouze vybrané soubory, které chcete exportovat.

Export Files in This Case

Options **File List**

☒

☒ Maxilla

☒ Pre-Op
 ☒ Base
 ☒ Scan Body Base

☒ Mandible

☒ Pre-Op
 ☒ Base
 ☒ Scan Body Base

☒ Occlusion

☒ First Occlusion

☐ Compress Files
 ☐ Combine Individual Mesh
 ☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

4. Nakonec klikněte na „Exportovat“.

Export hranice preparace


Medit Scan for Clinics poskytuje funkci pro vytvoření hranice preparace a Medit Link může přenést hranici preparace do CAD programu.

Exportovat hranici preparace jako barvu

Obecně platí, že Medit Link překonvertuje hranici preparace jako barvu a exportuje výsledek společně s maxillou nebo mandibulou. V CADu můžete vytvořit hranici preparace, odkazující na informace o barvě.

Příklad:

Maxilla

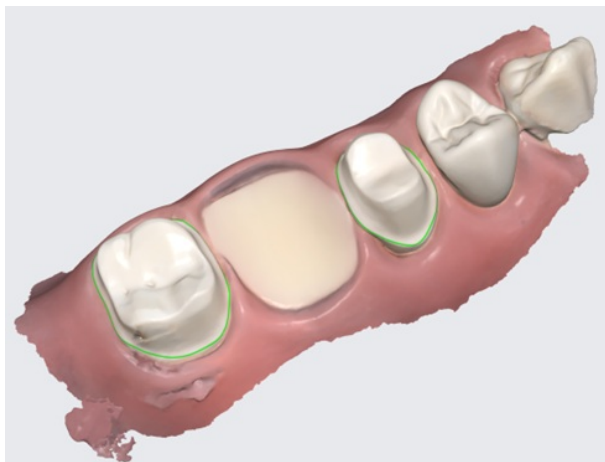

Výsledek s hranicí preparace jako barvou

iPoznámka

Tato funkce je dostupná pro formáty, které obsahují informace o barvě, jako je meditMesh, OBJ, PLY. Hranice preparace se nepřevádí na STL.

iPoznámka

Typ CAD >3shape nepodporuje tuto funkci.


Exportovat hranici preparace jako soubor

V případě exocadu Medit Link exportuje hranici preparace do „~margin.xyz“, který lze importovat přímo do exocad.

Tento soubor můžete použít v exocadu bez dalšího zpracování.

Příklad:

Maxilla	Hranice preparace
---------	-------------------

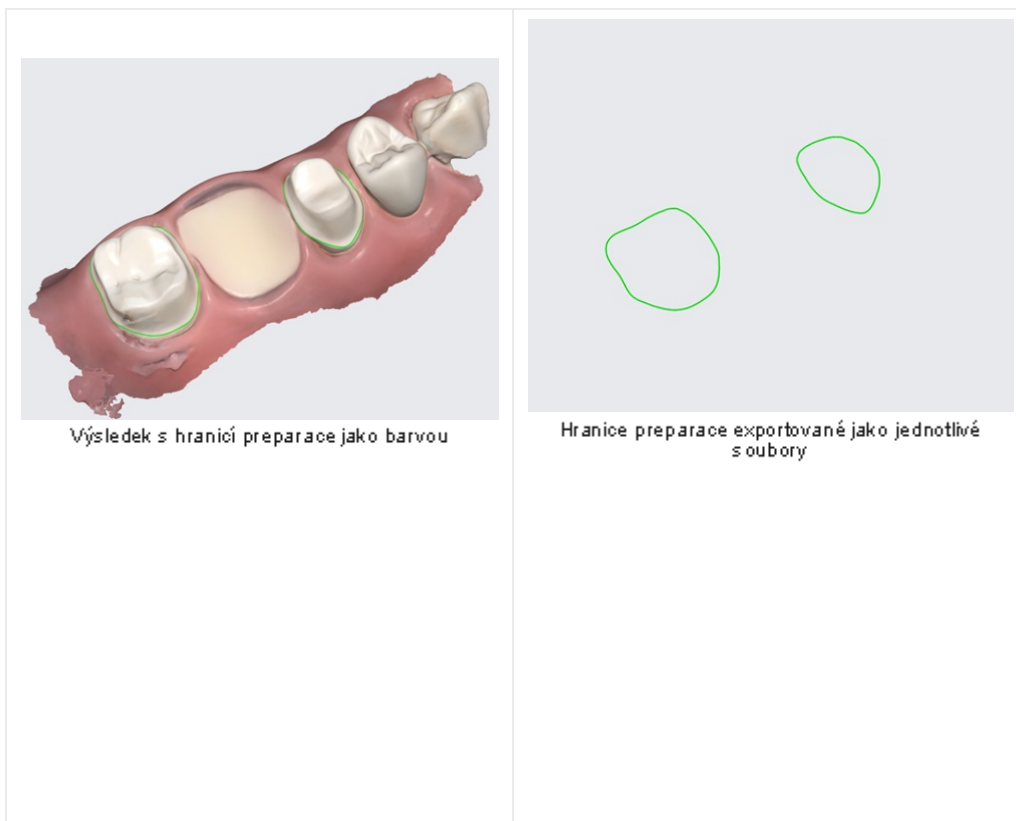

Exportovat Seznam případů jako CSV

Medit Link poskytuje funkci pro export seznamu případů ve formátu CSV.


Můžete exportovat seznam případů se základními informacemi a následně snadno spravovat případy.

Funkce „Exportovat do CSV“ je dostupná v následujícím menu aplikace Medit Link.

- In Box
- Work Box

Jak exportovat seznam případů

1. Přejděte do In Box nebo Work Box.
2. Vyberte případy, které chcete exportovat.

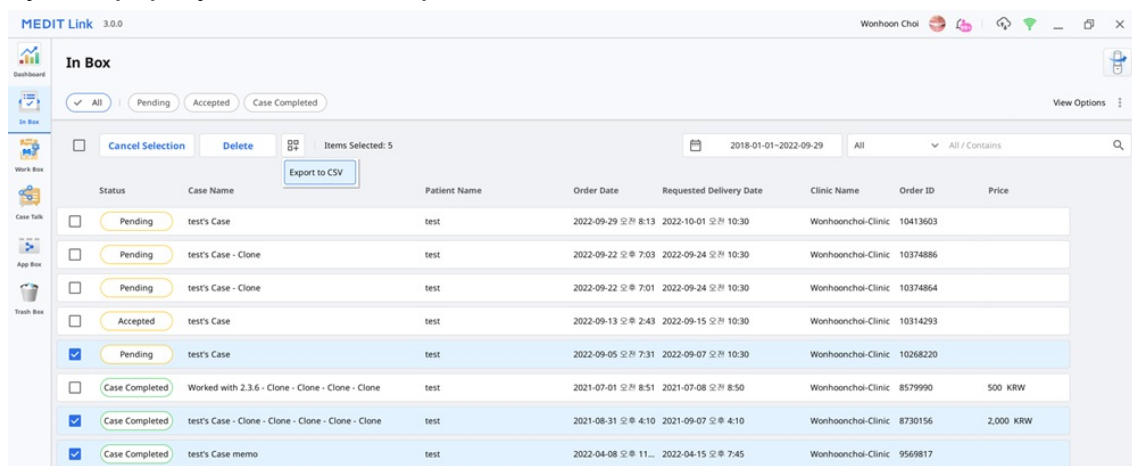

3. Click the "Expanded menu" button at the top to select the "Export to CSV" option.



4. Define the path and file name then save the results.

Stáhnout soubory z webstránky Medit Link

Medit Link poskytuje funkci stahování.

Pokud chcete získat výsledné soubory bez instalace aplikace Medit Link, můžete si soubory stáhnout z webové služby Medit Link.

Poznámka


Ke stažení souborů z webu by data měla být nahrána na Medit Cloud.

Funkce stahování je dostupná v následující nabídce webové služby Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Tlačítko „Stáhnout“ najdete vpravo nahoře.

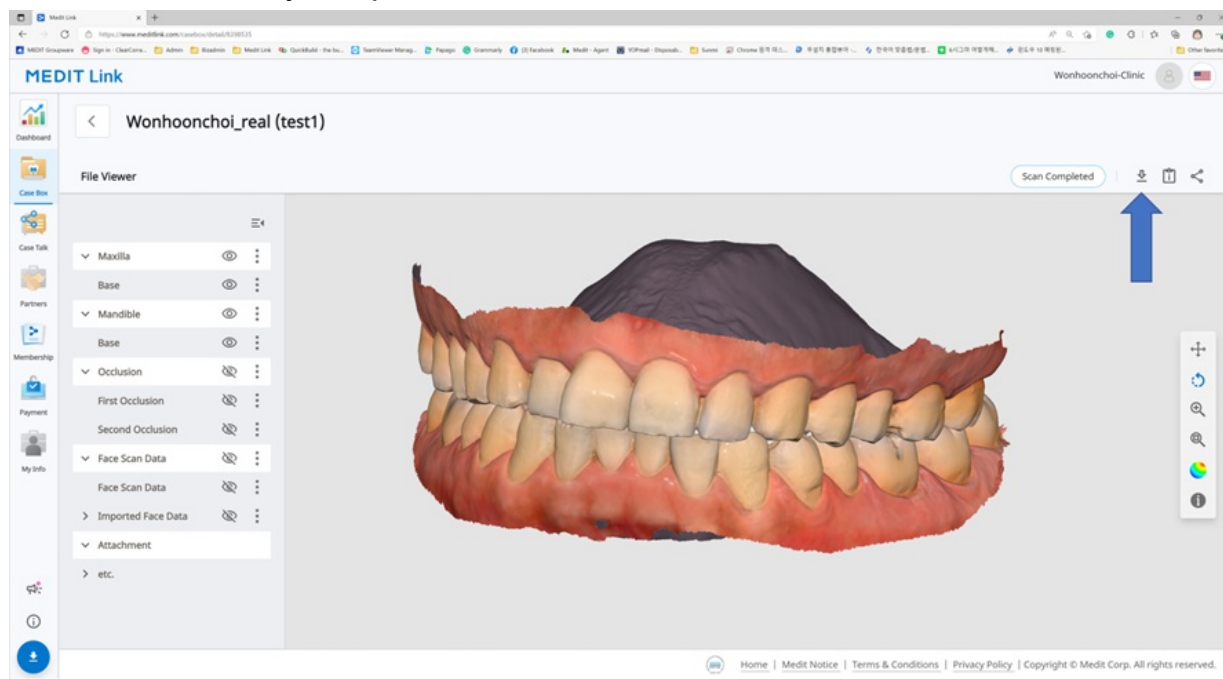

Web Viewer

Když sdílíte případ pomocí Case Talk, můžete nastavit, zda povolit stahování nebo ne.

Pokud zaškrtnete políčko „Udělit oprávnění ke stažení“ a sdílíte případ, mohou si soubory stáhnout všichni uživatelé, kteří se připojí ke sdílenému odkazu.

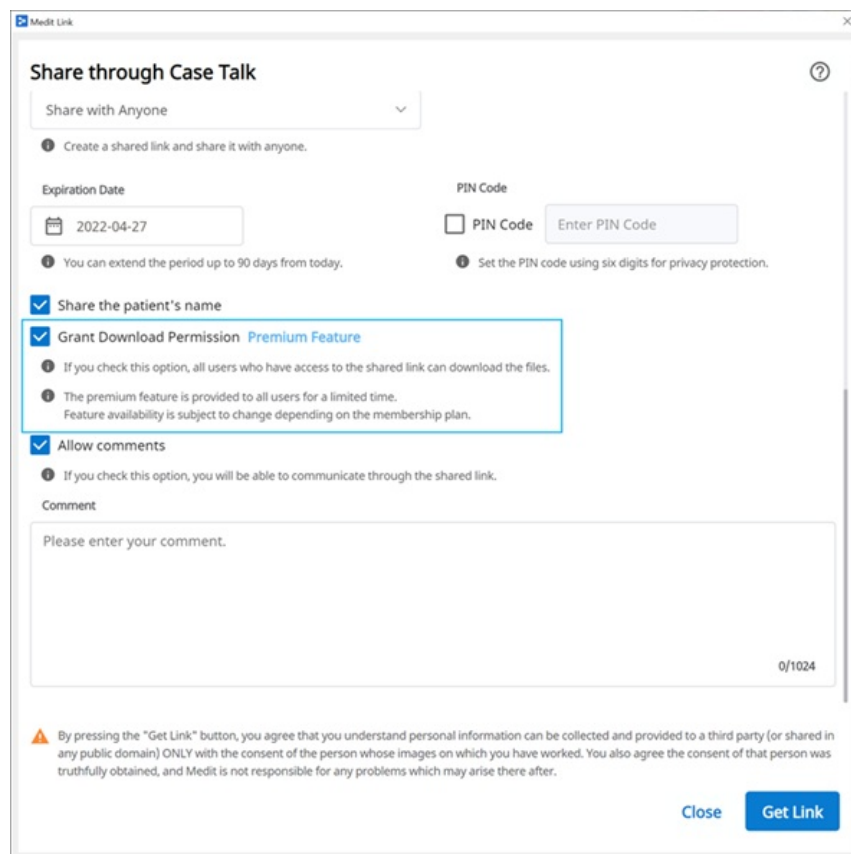

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Ve Web Viewer najdete ikonu „Stáhnout“ vpravo nahoře.

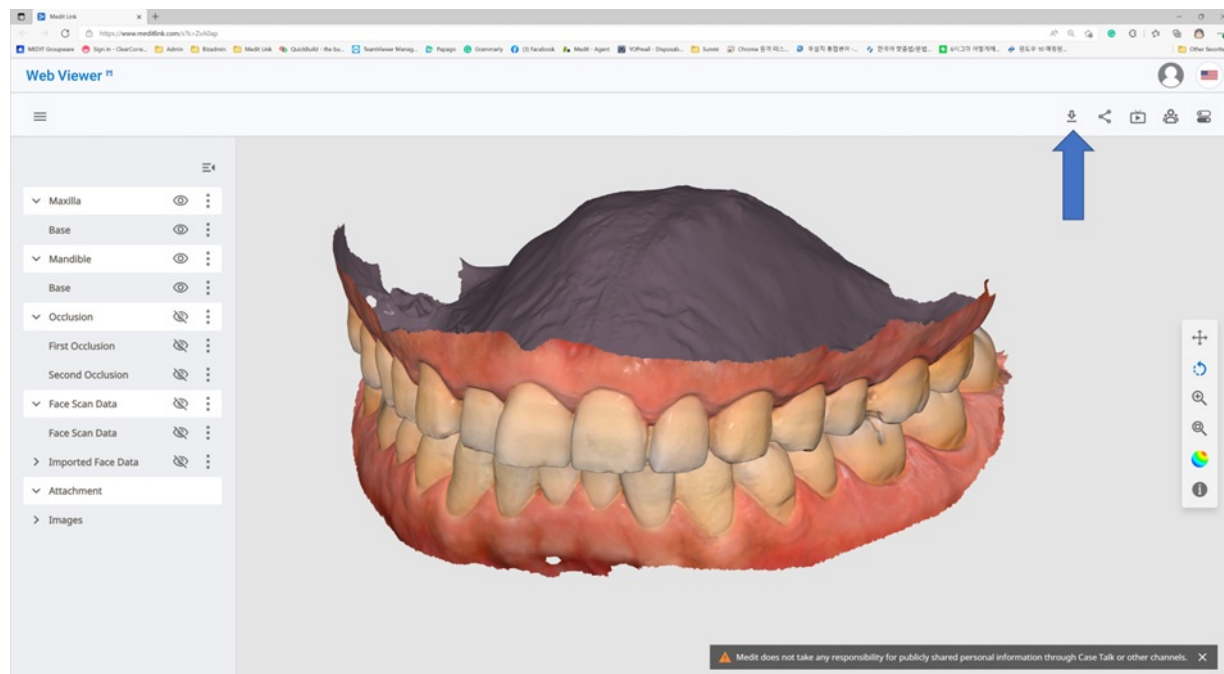

Jak stáhnout

1. Klikněte na „Stáhnout“.



2. Vyberte mesh formát sítě z dialogového okna stahování.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Poté klikněte na „OK“.

Objednávka/Správa objednávek

Snadno si můžete objednat případ s daty získanými z připojených programů a připojenými daty uživatelem.

Objednávání případů

Objednávku pro své partnery můžete zadat v Case Box.

1. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
2. Zkontrolujte informace požadované pro vaši objednávku.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: 오전 8:15

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Zvolte partnera.
4. Zkontrolujte informace o produktu na záložce Seznam objednávek.
 - Můžete se rozhodnout, zda chcete sdílet jméno pacienta.
5. Zkontrolujte soubory k objednání na kartě Seznam souborů.
6. Zadejte požadované datum doručení.
 - Výchozí hodnota je nastavena na 7 dní od data objednávky.
7. K vašemu partnerovi můžete přidat poznámku a připomínku pro konkrétní podrobnosti.
8. Když se z aplikace skenování vygeneruje více výsledků okluze, můžete odeslat všechny výsledky okluze najednou zaškrtnutím možnosti „Objednat všechny okluzní vztahy“.
9. Pokračujte v objednávce.
 - **Přeskočit platbu:** Pokračujte v objednávce bez použití platebního systému od Medit Link. Dostupné při objednávce od partnera se stavem „Smluvní“.
 - **Platba:** Pro pokračování v objednávce použijte platební systém od Medit Link. Dostupné při objednávce u smluvního partnera.
 - **OK:** V objednávce pokračujeme bez jakýchkoli podmínek, týkajících se ceny produktu. Dostupné při objednávce od partnera se stavem „Partnerství“.


iPoznámka

Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Přeskočit platbu
- Zaplatit


Potvrdit objednávku (In Box)

- Přijmete objednávku po jejím obdržení.
- Přijaté objednávky budou předány do Work Box.

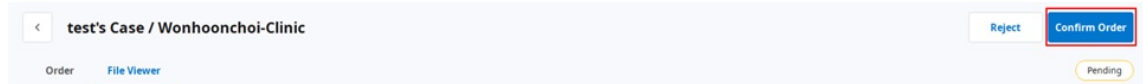


Zrušit objednávku (Order Box)

- Objednávku můžete zrušit dříve, než ji váš partner přijme.
- Zrušené případy lze objednat znovu.

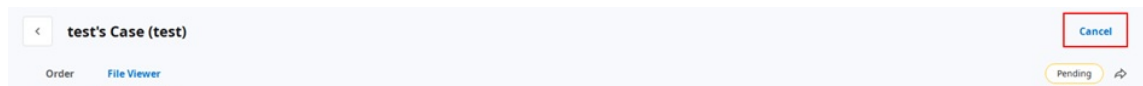


Odmítnout objednávku (In Box)

- Přijatou objednávku můžete odmítnout.
- Odmítnuté případy lze objednat znovu.

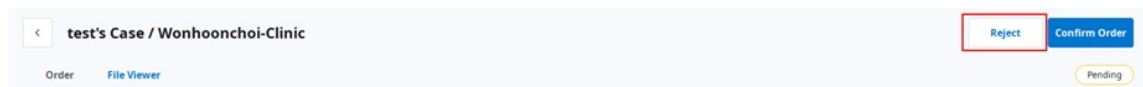

Kontrola objednaných případů

Detaily o objednaném případě můžete zkontrolovat v Order Box v účtu kliniky. Můžete také zkontrolovat obdržený případ v In Box v účtu laboratoře.

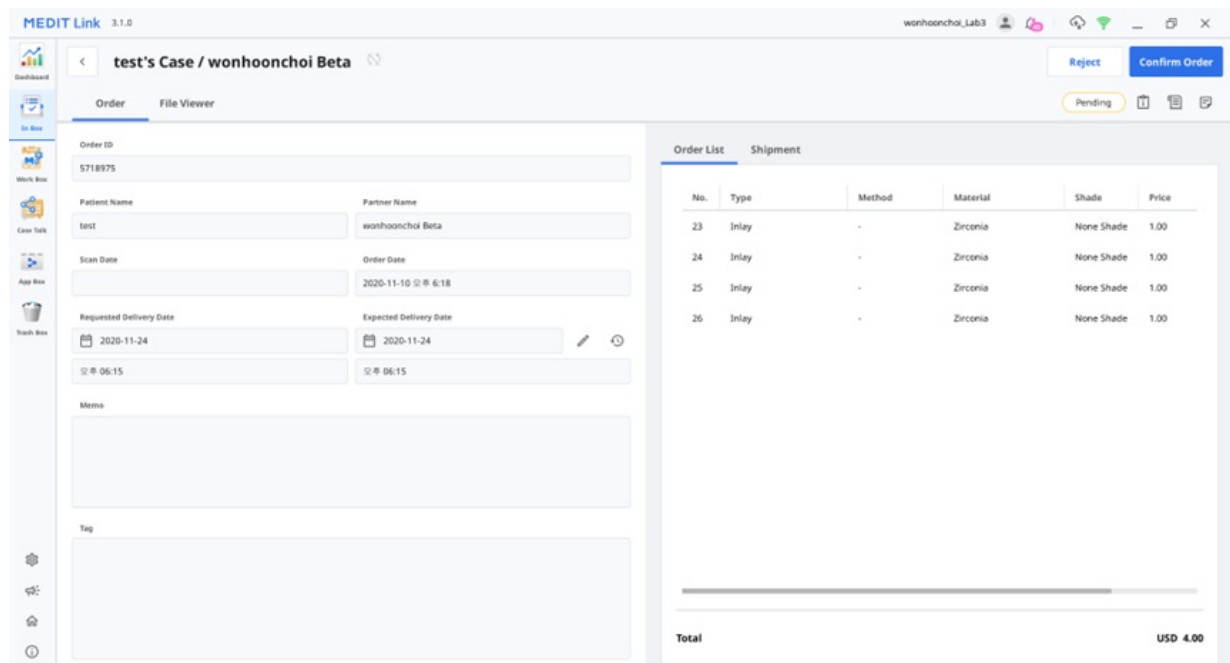

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Info o objednávce	Informace, které lze zahrnout do objednávky, jsou následující: ID objednávky/jméno pacienta/název účtu/datum skenování/datum objednávky/datum doručení/datum doručení/poznámka. Můžete zkontrolovat detaily o objednaném produktu a informace o dodání.
Seznam objednávek	Seznam objednávek zobrazuje detaily o objednaném produktu.
Odeslání	Zadejte/zkontrolujte informace o odeslání.

Zadání informací o doručení (In Box)

Zadejte informace o doručení pro dokončený případ a začněte odesílat.

1. Klikněte na záložku „Doručení“.
2. Zadejte informace o zásilce a klikněte na „Registrovat“.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Zadané informace budou odeslány vašemu partnerovi.

Správa data doručení

Při zadávání objednávky můžete nastavit předpokládaný termín dodání a tato informace bude předána vašemu partnerovi.

Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)

- Při objednávce z Case Box můžete zadat požadované datum dodání.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Výchozí hodnota je 7 dní od data objednávky.
- Zadejte datum/čas, kdy chcete produkty obdržet a pokračujte v objednávce.
- Čas můžete snadno nastavit pomocí posuvníku.

Nastavit očekávané datum doručení (Účet kliniky)

- Můžete zadat očekávané datum doručení pro případ, objednaný z In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Ověřte si u partnera požadovaný termín dodání a přeplánujte jej pomocí tlačítka „Upravit“.
2. Zadejte očekávané datum doručení s ohledem na aktuální pracovní den. V případě potřeby můžete také zanechat komentář.
3. Klikněte na „Použít“.

4. Předpokládaný termín dodání a připomínka budou zaslány společně s objednávkou.
 - Datum a připomínky můžete zkontrolovat v Order Box.
 - Předpokládané datum doručení můžete změnit a tyto změny budou předány vašemu partnerovi.
5. Historii případů můžete zkontrolovat pomocí tlačítka „Historie“.



Dokončování případů

Dokončit (Work Box/In Box)


Po dokončení všech úkolů dokončete práci na případě stisknutím tlačítka „Done“.

Dokončete případ z detailu případu

Tlačítko „Menu“ najdete vpravo od tlačítka Otevřít.



Dokončete práci kliknutím na ikonu „Menu“ a výběrem „Done“.

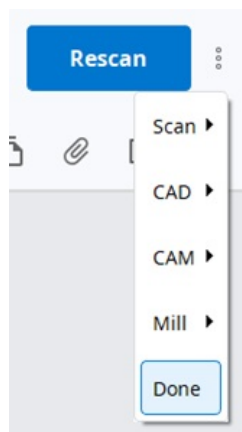


Dokončit více případů ze seznamu případů

Když vyberete případy z Work Box, tlačítko rozbalené menu se nachází v horní části seznamu.



Dokončete několik případů takto:

1. Přejděte do Work Box.
2. Vyberte všechny případy k dokončení.

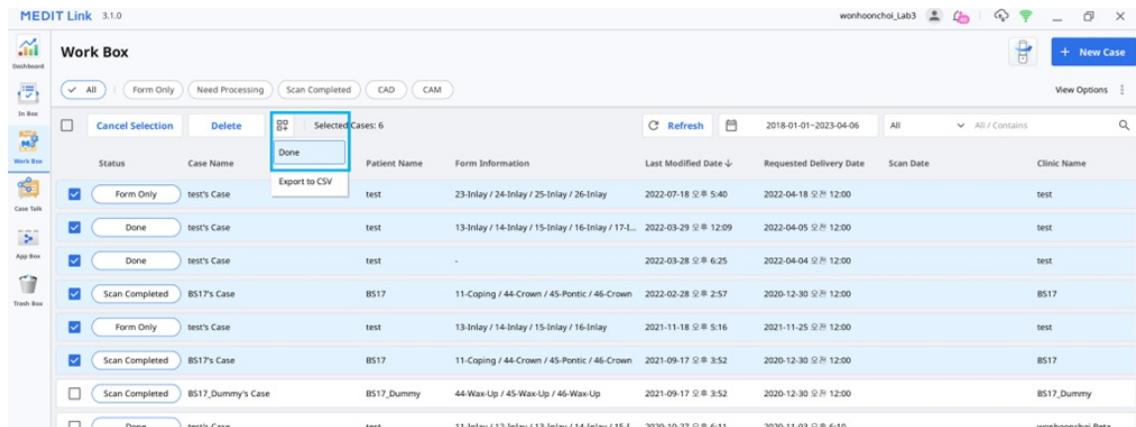

3. Klikněte na výše uvedené tlačítko „Rozšířené menu“.




4. Ze seznamu vyberte „Done“.

Dokončit (Case Box/Order Box)

Po dokončení případu z laboratoře musí případ potvrdit klinika, čímž se dokončí celý proces objednávky.

Pokud laboratoř dokončí svou práci, může klinika následně najít funkci „Potvrdit doručení“ v Order Box.

Kliknutím na toto tlačítko se celý proces objednávky dokončí a stav případu se změní na „Case Completed“.

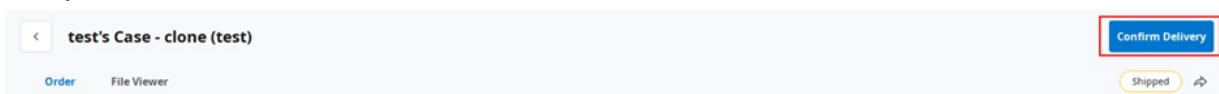

Dokončete neobjednaný případ v Case Box

U případů, které nejsou objednány do Laboratoře, můžete tyto případy skompletizovat z Case Box.

1. Přejít do Case Box.
2. Vyberte případ, který chcete skompletizovat.

MEDIT Link 3.0.0 Wanhoon Choi_clinic

Case Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Cancel Selection | Delete | Items Selected: 4 | 2018-01-01 ~ 2022-09-29 | All / Contains

Case Completed

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오후 8:45	
☐ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오후 8:13	2022-09-29 오후 7:56
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 10:41	
☒ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오후 9:27	
☒ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오후 9:27
☐ Scan Completed	Preop 사용원 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 8:53

3. Klikněte na tlačítko „Rozšířené menu“.



4. Vyberte „Case Completed“.

Komunikujte pomocí značek

Pomocí značek můžete přidat další informace pro váš případ a odeslat je svým partnerům.

Přidejte značky při vytváření nového případu

Při vytváření nového případu nebo úpravě informací o případě můžete zadat značky.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Můžete snadno vyhledávat a vybírat značky, které jste použili dříve.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Přidejte značky při objednávce

Značky můžete kontrolovat a upravovat v dialogu Objednávka při objednávání.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Zkontrolujte značky na detailech případu

MEDIT Link 3.1.0

mandibular movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Order Open

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Raw Data
Maxilla
Base
Mandible
Base
Occlusion
Dynamic Occlusion
Attachment

Occlusal Relationship 1

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

