

USER GUIDE

Medit Link

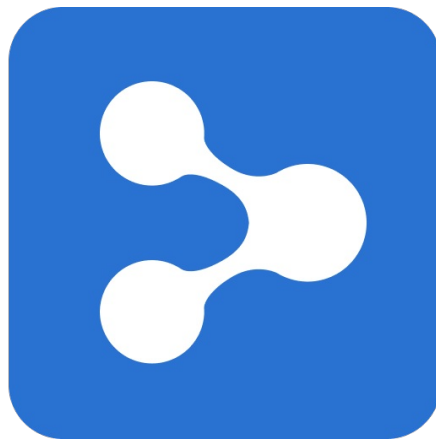


Table of Contents

Medit Link

Εισαγωγή	6
Medit Link	6
Επισκόπηση υπηρεσίας	6
Υπηρεσία Cloud	7
Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών	7

Medit Link > Εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος	9
Απαιτήσεις συστήματος για Windows	9
Απαιτήσεις συστήματος για macOS	9
Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία	9
Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης	9
Ελάχιστο για κινητά	9
Εγκατάσταση σε Windows	10
Εγκατάσταση σε macOS	13

Medit Link > Έναρξη

Εγγραφείτε και συνδεθείτε	17
Ιστοσελίδα Medit Link	17
Εγγραφή	17
Σύνδεση και Αρχική σελίδα	19

Medit Link > Ιστοσελίδα Medit Link

Επισκόπηση	21
Dashboard	22
Επισκόπηση Dashboard	22
Medit Insights	22
Εγγραφή στο Medit Insights	23
Απεγγραφή από το Medit Insights	24
Case Box/Work Box	25
Φιλτράρισμα περιστατικού	25
Φιλτράρισμα κατά κατάσταση	25
Φιλτράρισμα κατά διάρκεια	25
Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση	26
Λεπτομέρειες περιστατικού	26
Order Box/In Box	28
Λεπτομέρειες παραγγελίας	28
Καρτέλες σε Order Box/In Box	28
Case Talk	30
Δημιουργία Case Talk	30
Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης	31
Λεπτομέρειες Case Talk	33
Web Viewer	34
Σχολιασμός	34
Σχόλια	35
Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο	36
Δέντρο δεδομένων	36
Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων	36
3D έλεγχοι μοντέλου	37
Συνεργάτες	39

Αναζήτηση συνεργατών	39
Η λίστα συνεργατών μου	39
Πρόσκληση συνεργάτη	40
Συνδρομή	41
Συνδρομή	41
Το Πρόγραμμα μου	42
Αποθήκευση Cloud	42
Εγγραφή	43
Απεγγραφή	45
Πληροφορίες χρέωσης	46
Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής	47
Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής	49
Εξαργύρωση	50
Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης	50
Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης	51
Πληρωμή	53
Λεπτομέρειες πληρωμής (Λογαριασμοί κλινικών & εργαστηρίων)	53
Πληροφορίες πληρωμών λογαριασμού (Λογαριασμός εργαστηρίου μόνο)	53
Οι Πληροφορίες μου	54
Ο λογαριασμός μου	54
Η εταιρεία μου (μόνο λογαριασμός διαχειριστή)	54
Ο σαρωτής μου	55
Ο πινακίδα μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή εργαστηρίου)	55
Άνοιγμα του μενού	56
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	56
Πληροφορίες Medit	56
Λήψη εφαρμογής Medit Link	56

Medit Link > Εφαρμογή Medit Link

Επισκόπηση	58
Επισκόπηση Box	58
Γραμμή τίτλου	60
Ειδοποιήσεις	60
Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών	61
Μεταφόρτωση	62
Λήψη	62
Κατάσταση δικτύου	63
Μενού	64
Dashborad	64
Case Box/Work Box	64
Καρτέλες σε Case Box/Work Box	65
Λειτουργίες σε Case Box/Work Box	65
Order Box/In Box	67
Καρτέλες σε Order Box/In Box	67
Case Talk	67
App Box	68
Trash Box	69
Ρυθμίσεις	69
Διαχείριση ασθενή	69
Προσθήκη νέου ασθενή	70
Διαγραφή ασθενή	70
Συγχώνευση ασθενών	71
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	72
Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Medit Link	72
Πληροφορίες Medit	72
Ρυθμίσεις	73

Γενικά	73
Διαχείριση αποθήκευσης	74
Ορισμός περιόδου	74
Τοπικός αποθηκευτικός χώρος	74
Αποθήκευση Cloud	75
Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος	75
Επιλογές εξαγωγής	76
Εργαλείο μετατροπής περιστατικών	77
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μετατροπής περιστατικών	78
Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης	79
Σχετικά	80
Οδηγός χρήση	80
Πρόγραμμα προβολής αρχείων	81
Δέντρο δεδομένων	81
Εργαλεία ελέγχου μοντέλου	81
3D έλεγχος μοντέλου	82
Έλεγχος 2D εικόνας	82
Εργαλεία λειτουργίας	83
Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις	83
Ορθοδονική προβολή	83
Γέμισμα κενών	84
Περικοπή	85
Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης	87
Κίνηση της κάτω γνάθου	89
Διαχείριση των Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων	90
Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα	90
Επιλογές προβολής	91
Φίλτρα κατάστασης	91
Στοιχεία πίνακα	92
Τύπος προβολής	93
Προβολή συλλογής	94
Προβολή λίστας	95
Ομαδοποίηση	95
Ταξινόμηση	96
Φιλτράρισμα και αναζήτηση	98
Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία	98
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης	98

Medit Link > Ροή εργασιών

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού	100
Δημιουργία περιστατικών	100
Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	100
Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	101
Επεξεργασία περιστατικών	101
Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	101
Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	102
Κλωνοποίηση περιστατικών	103
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	103
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	103
Διαγραφή περιστατικού	104
Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)	104
Πληροφορίες φόρμας	105
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box	105
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	105
Εισαγωγή στην καρτέλα CAD	105
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box	105

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	105
Εισαγωγή στην καρτέλα CAD	106
Σύνδεση δοντιών με γέφυρα	106
Ρύθμιση επιλογών σάρωσης	106
Medit Scan for Labs	106
Γενικές επιλογές	106
Επιλογές κατά δόντια	107
Προσθήκη στα αγαπημένα	107
Προσθήκη στα αγαπημένα	107
Διαχείριση αγαπημένων προτύπων	107
Εργασία σε Σάρωση/CAD	108
Διαδικασία σάρωσης	108
Διαδικασία CAD	108
Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων	109
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης	109
Εξαγωγή επιλεγμένων αρχείων	110
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου	111
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα	111
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο	112
Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV	113
Πώς να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών	113
Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link	114
Case Box/Work Box	114
Web Viewer	114
Πως να κάνετε λήψη	115
Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών	117
Μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε ένα περιστατικό με δεδομένα που αποκτήθηκαν από συνδεδεμένα προγράμματα και συνημμένα δεδομένα του χρήστη.	117
Παραγγελία περιστατικών	117
Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)	118
Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)	118
Απορριπτές παραγγελίες (In Box)	118
Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών	118
Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)	119
Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης	120
Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)	120
Ολοκλήρωση περιστατικών	121
Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)	121
Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών	121
Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών	122
Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)	122
Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box	123
Επικοινωνία με χρήση ετικετών	124
Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού	124
Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία	125
Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού	126

Εισαγωγή

Medit Link

Το Medit Link είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ κλινικών και εργαστηρίων για να παρέχει μια βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για κάθε μέρος.

Προσφέρει διαφοροποιημένες λειτουργίες με βάση τον τύπο και τα δικαιώματα κάθε λογαριασμού. Το πρόγραμμα παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση της ροής εργασιών, από σάρωση με στοματικούς σαρωτές και σαρωτές μοντέλων, παραγγελία περιστατικών και σχεδιασμό και παραγωγή αποκαταστάσεων.

Το Medit Link αποτελείται από μια διαδικτυακή υπηρεσία και μια εφαρμογή για υπολογιστή.

Επισκόπηση υπηρεσίας

		Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
		• Εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού • Αναζήτηση • Αναζήτηση και διαχείριση συνεργατών • Κοινή χρήση περιστατικών μέσω του Web Viewer με έναν σύνδεσμο με δυνατότητα κοινής χρήσης • Πρόσβαση σε περιστατικά από την εφαρμογή • Διαχείριση παραγγελιών	• Εισάγετε πληροφορίες φόρμας • Σάρωση • Κάντε/λάβετε παραγγελίες και πραγματοποιήστε πληρωμές • Σύνδεση με CAD • Διαχείριση ασθενών
Κλινική	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε συνεργάτες και την εταιρεία σας, διαχειριστείτε πληροφορίες πληρωμών και κοινοποιήστε περιστατικά. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Συνεργάτες - Συνδρομή - Πληρωμή - Οι πληροφορίες μου	Εισάγετε πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, συνδέστε με CAD, πραγματοποιήστε παραγγελίες, πραγματοποιήστε πληρωμές και διαχειριστείτε ασθενείς. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Διαχείριση ασθενή
	Μέλος	- Case Box - Case Talk - Οι Πληροφορίες μου	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Εργαστήριο	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε συνεργάτες και την εταιρεία σας, διαχειριστείτε πληροφορίες πληρωμών και κοινοποιήστε περιστατικά.. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Συνεργάτες - Συνδρομή - Πληρωμή - Οι Πληροφορίες μου	Εισάγετε πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, σύνδεση με CAD και λήψη/ διαχείριση παραγγελιών. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Μέλος	- Work Box - Case Talk - Οι Πληροφορίες μου	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

ΊΣΗΜΕΪΩΣΗ

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Πληρωμή

Υπηρεσία Cloud

Το Medit Link υποστηρίζει την αυτόματη μεταφόρτωση/λήψη βάσεων δεδομένων και αρχείων μέσω του AWS (Amazon Web Services).

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud συγχρονίζονται αυτόματα με τους υπολογιστές πολλών χρηστών στην εταιρεία, ώστε να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα από οποιονδήποτε υπολογιστή ανά πάσα στιγμή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η ανάκτηση βάσει cloud διατηρούν όλα τα δεδομένα σας ασφαλή. Διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή ακόμα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης του υπολογιστή.

Η υπηρεσία cloud επιτρέπει στους συνεργαζόμενους οδοντιάτρους και τα εργαστήρια να κοινοποιούν γρήγορα δεδομένα χωρίς να υπάρχει η ταλαιπωρία της αποστολής με email ή της χειροκίνητης μεταφοράς των σαρώσεων. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασθενούς, κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται και μεταδίδονται με ασφάλεια. Η Medit συμμορφώνεται με ιατρικούς νόμους και κανονισμούς όπως το HIPAA και το GDPR.

Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών

Το Medit Link προσφέρει το δικό του σύστημα παραγγελιών και πληρωμών.

- Το Medit Link σας επιτρέπει να δημιουργείτε συμβόλαια μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντιατρικών εργαστηρίων και να κοινοποιείτε δεδομένα γρήγορα και εύκολα.
- Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την κατάσταση της παραγγελίας.

Το σύστημα που υποστηρίζεται από πιστωτική κάρτα λειτουργεί με ενότητες πληρωμών διαδικτυακών πλατφορμών πληρωμών, όπως το Stripe (www.stripe.com) και το I'mPort (<http://www.iampor.com>), κάνοντας τις υπηρεσίες πληρωμών εύκολες και βολικές.

Ήσημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Πληρωμή

Απαιτήσεις συστήματος

Ήμειωση

Ανατρέξτε στις απαιτήσεις συστήματος για το Medit Scan for Clinics και το Medit Scan for Labs, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σάρωσης με τον σαρωτή σας.

Απαιτήσεις συστήματος για Windows

	Φορητός υπολογιστής & Επιτραπέζιος υπολογιστής
Επεξεργαστής	Intel Core i5 2.6 GHz ή νεότερο
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Κάρτα γραφικών	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) ή νεότερο / ή ισοδύναμη κάρτα γραφικών AMD
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8 64 Bit (μη διαθέσιμο σε 32 Bit) ή νεότερη έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος για macOS

	Mac
Επεξεργαστής	M1 με 8πύρηνο, 7πύρηνο GPU, 16πύρηνο Neural Engine
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερα
Λειτουργικό σύστημα	Monterey 12

Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία

Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης

	Προγράμματα περιήγησης
Υπολογιστής	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Ελάχιστο για κινητά

Τύπος	Android	iOS
Συσκευή	Galaxy S7 ισοδύναμο ή νεότερο	iPhone 7 ισοδύναμο ή νεότερο
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Μνήμη RAM	3 GB ή περισσότερα	2 GB ή περισσότερα
AP	Νεότερο από Snapdragon 710	A10 Fusion


Εγκατάσταση σε Windows

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με προγράμματα απόκτησης σαρώσεων - Medit Scan for Clinics και Medit Scan for Labs.


1. Εκτελέστε το Medit_LinkSetup.exe.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε το φάκελο για την εγκατάσταση του Medit Link. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας και κάντε κλικ στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

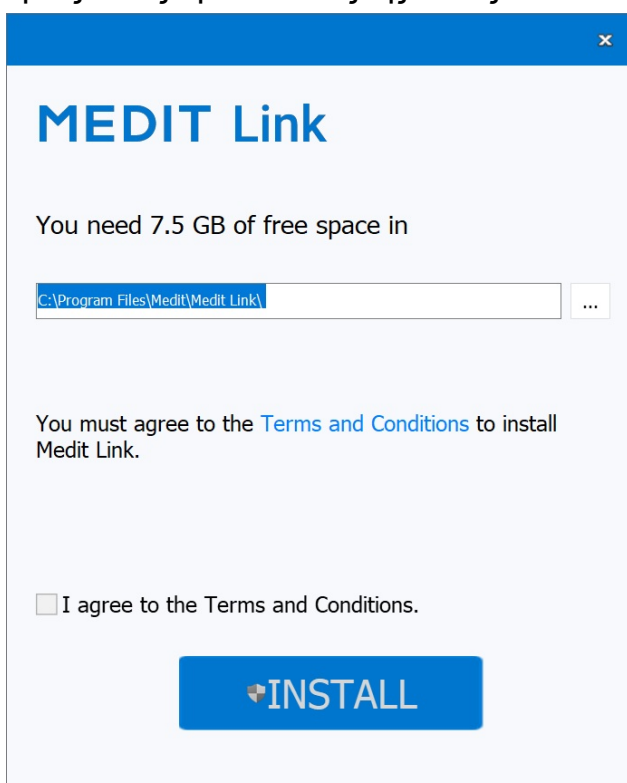

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σαρωτή είναι αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Η εγκατάσταση ενδέχεται να μην προχωρήσει εάν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας.
5. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

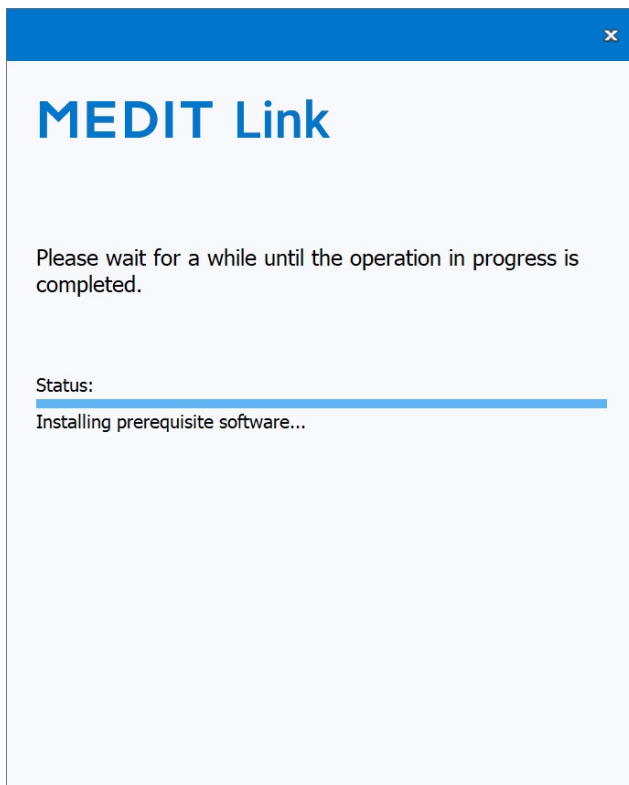

6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν δεν έχετε τον σαρωτή.

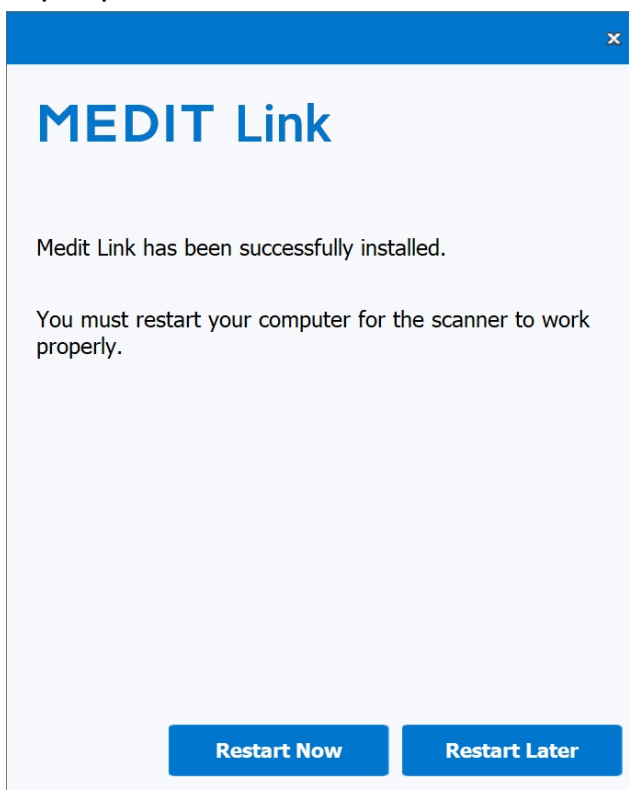


iΣημείωση

Εάν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο σαρωτής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.


Εγκατάσταση σε macOS

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με το Medit Scan for Clinics.


1. Εκτελέστε το Medit_Link_x.x.x.pkg και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

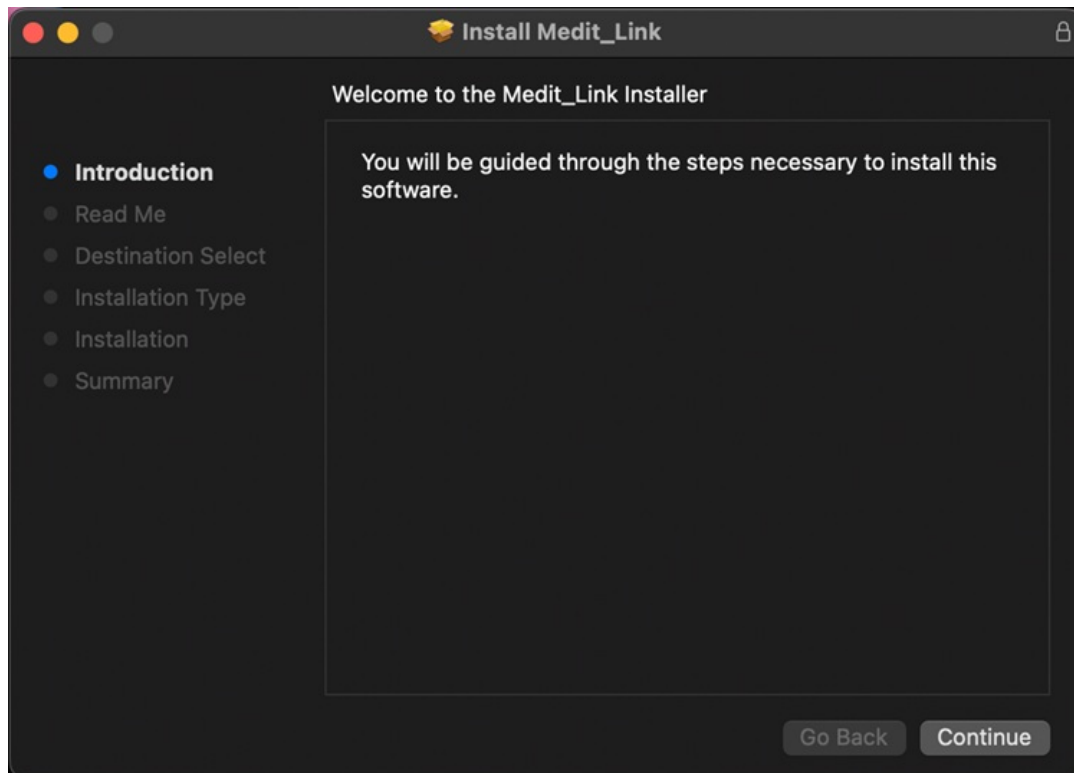


2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

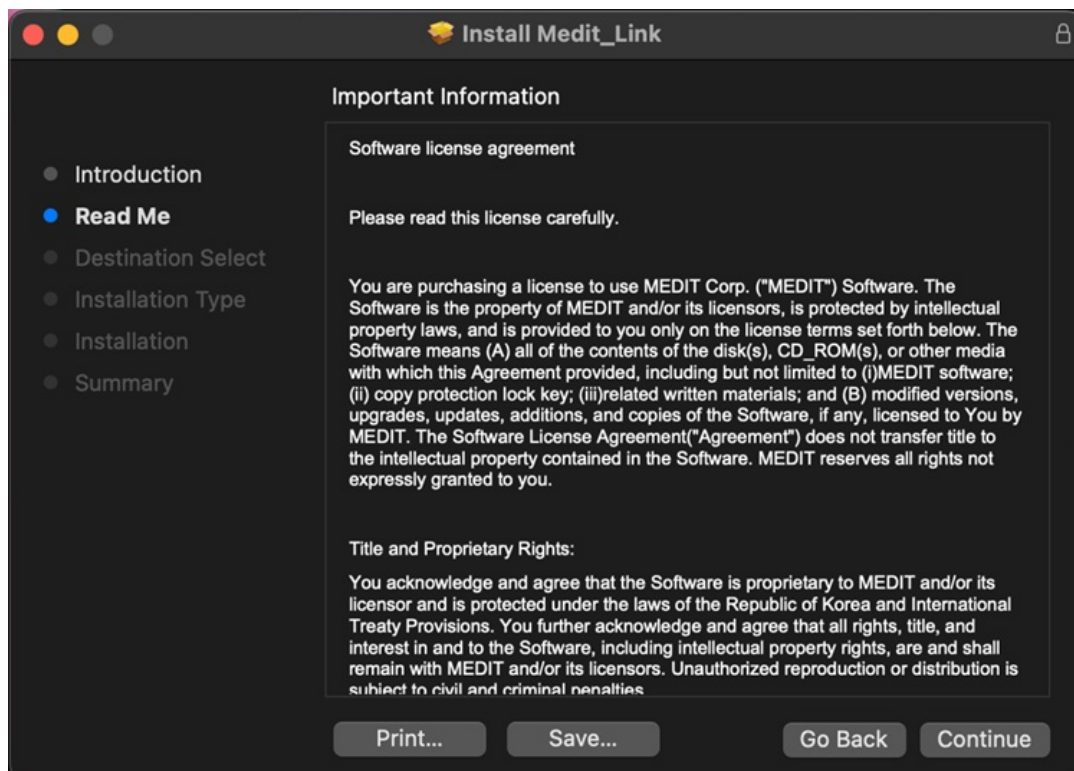

3. Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

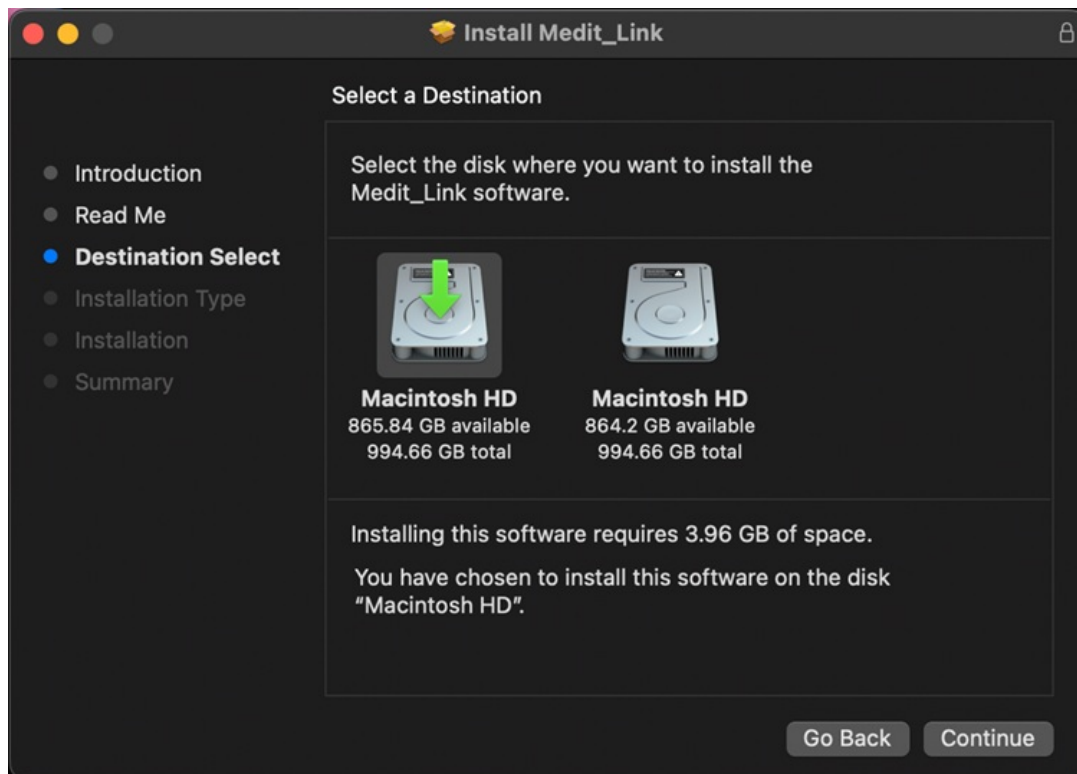


4. Κάντε κλικ στην «Αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης...» για να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης.

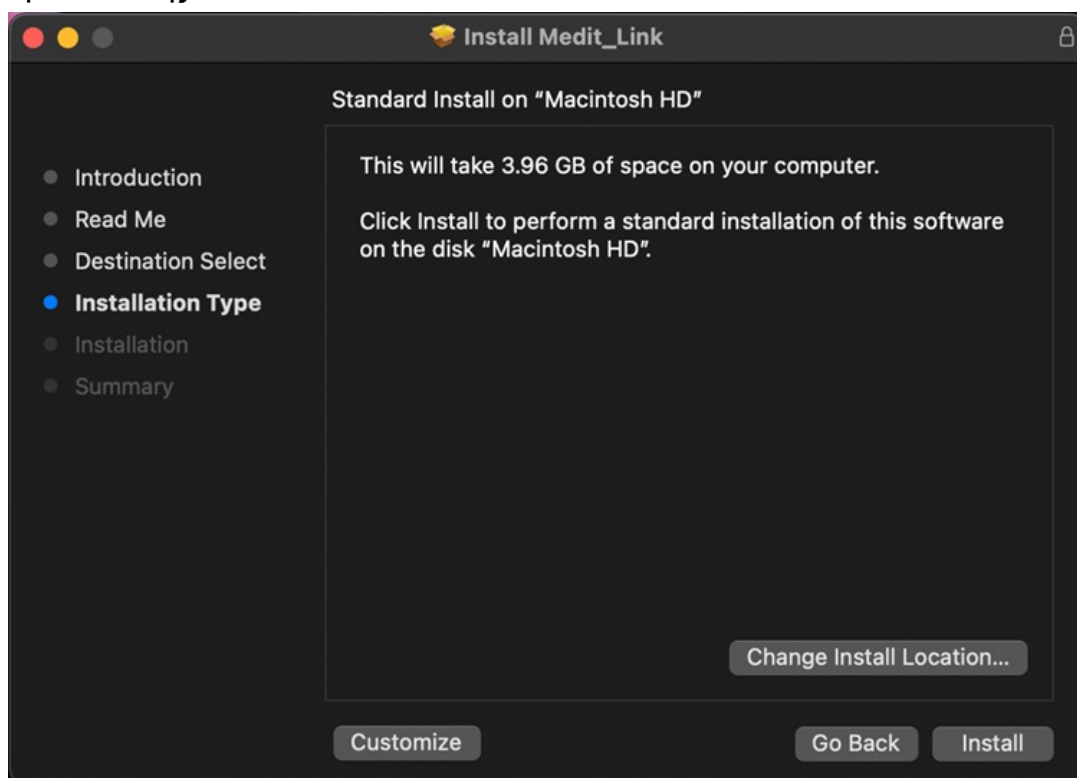


5. Κάντε κλικ στην «Εγκατάσταση» και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Mac για να επιτρέψετε την εγκατάσταση, εάν σας ζητηθεί.



6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

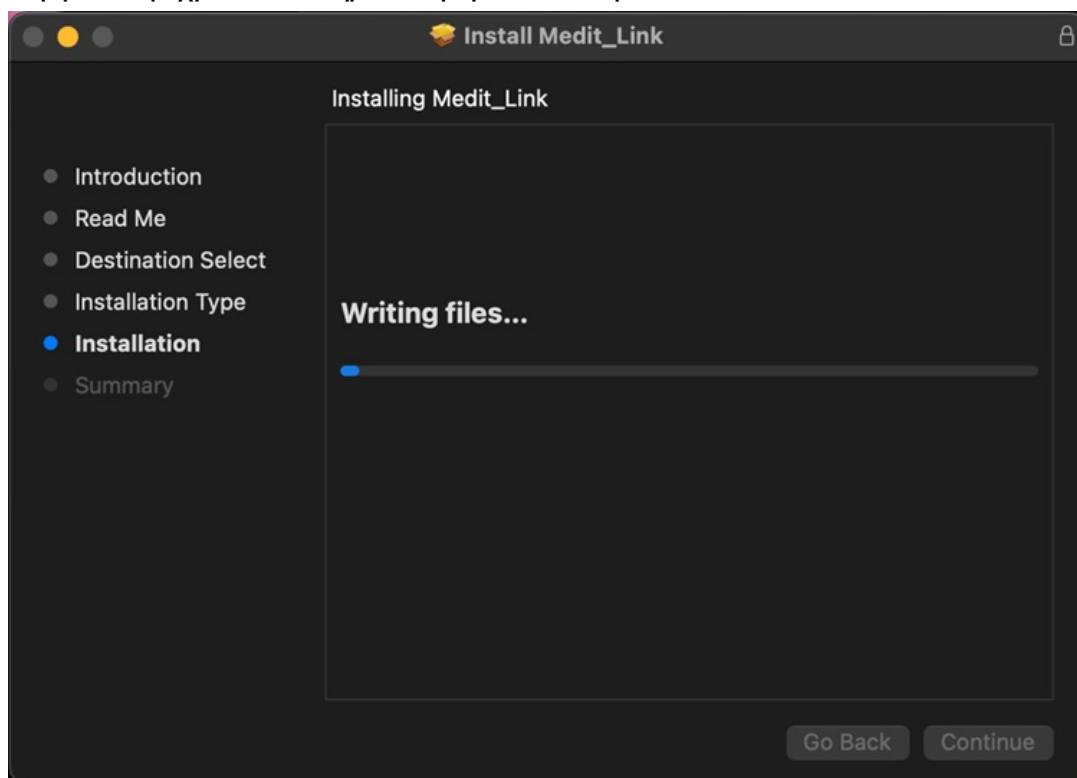

7. Κάντε κλικ στο «Κλείσιμο» για έξοδο από το παράθυρο εγκατάστασης.

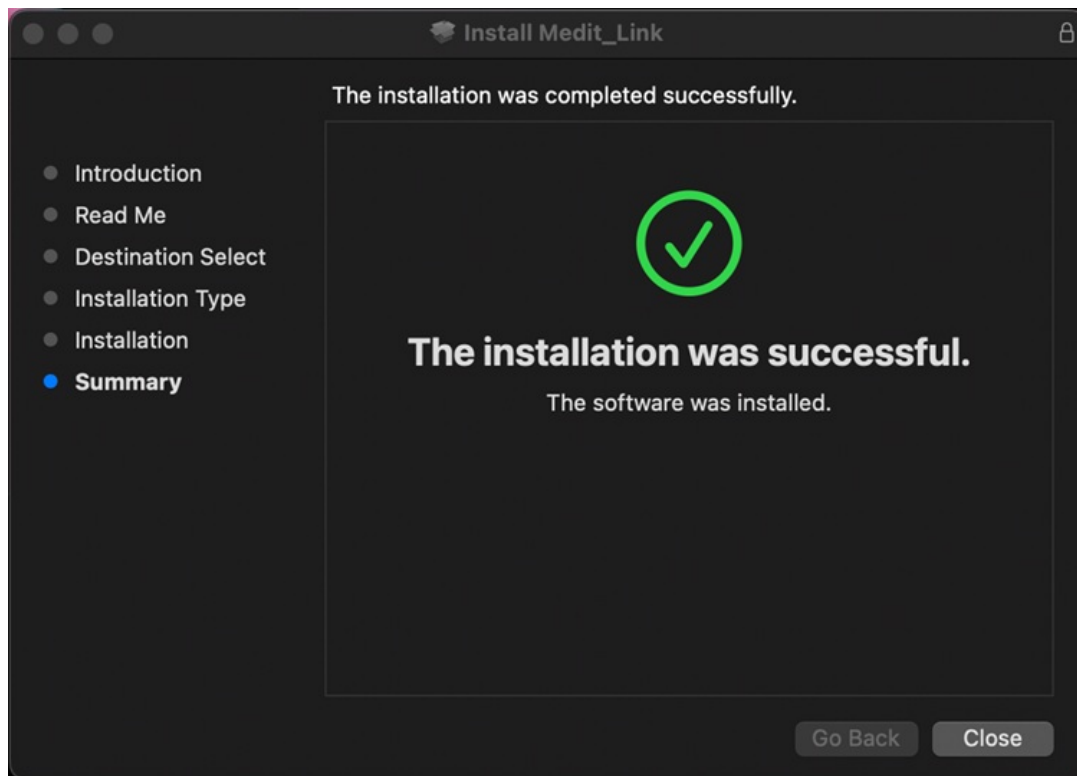

Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ιστοσελίδα Medit Link

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Medit Link στη διεύθυνση www.meditlink.com.



Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Medit Link, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που παρέχονται στο Medit Link αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ως κλινική ή εργαστήριο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους τέσσερις τύπους λογαριασμού για καταχώριση συνδρομής και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με πλήρεις ή περιορισμένες δυνατότητες και προνόμια, ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού.

- Κλινική - Διαχειριστής
- Κλινική - Μέλος
- Εργαστήριο - Διαχειριστής
- Εργαστήριο - Μέλος

Ο διαχειριστής είναι συνήθως εκπρόσωπος της εταιρείας σας και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Medit Link. Αντίθετα, ο λογαριασμός μέλους έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Για να εγγραφείτε σε συνδρομή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό; Εγγραφείτε» στη σελίδα σύνδεσης.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Αφού διαβάσετε τις παρεχόμενες περιγραφές, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» στον επιθυμητό τύπο λογαριασμού.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.


Register

3. Εισάγετε το όνομα κλινικής ή εργαστηρίου και, ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο λογαριασμού, κάντε τα εξής:
 - Εάν κάνετε εγγραφή ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο «Έλεγχος διαθεσιμότητας» για να δείτε εάν το όνομα που καταχωρίσατε είναι διαθέσιμο.
 - Εάν κάνετε εγγραφή ως μέλος, κάντε κλικ στην «Αναζήτηση.» Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή της εταιρείας σας προτού εγγραφείτε.
4. Συμπληρώστε την υπόλοιπη φόρμα εγγραφής και κάντε κλικ στην «Εγγραφή». Θα σας σταλεί ένα email επαλήθευσης.
5. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας

χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που λάβατε.

Σύνδεση και Αρχική σελίδα

1. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας στη σελίδα σύνδεσης και κάντε κλικ στην «Σύνδεση».

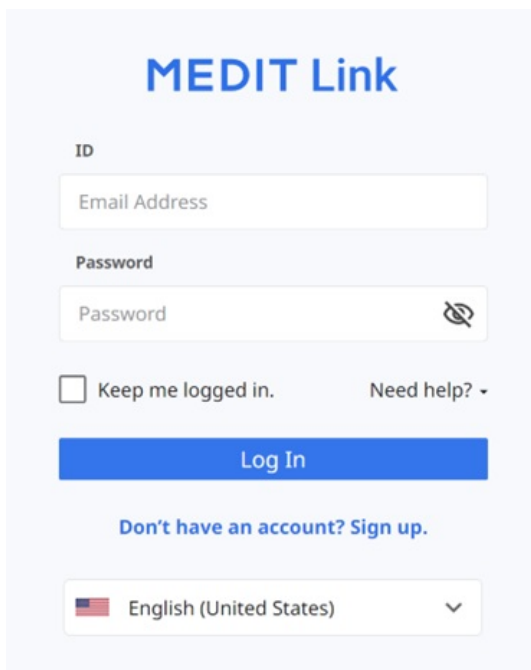

The image shows the login interface for MEDIT Link. At the top, the text "MEDIT Link" is displayed in blue. Below it, there are two input fields: "ID" with a placeholder "Email Address" and "Password" with a placeholder "Password" and an eye icon for toggling visibility. Under the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in." and a link "Need help?" with a downward arrow. A blue "Log In" button is positioned below these elements. Further down, there is a link "Don't have an account? Sign up." and a language selection dropdown menu showing "English (United States)" with a flag icon and a downward arrow.

2. Το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί εάν δεν έχετε συμπληρώσει τις πληροφορίες της εταιρείας.

Ίσημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Medit Link, θα πρέπει να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή.


Welcome to Medit Link

Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.

- Address Information
- Organization Information
- Additional Information
- Scanner Information

Here are four simple steps to get you started with your personal order system.

You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.

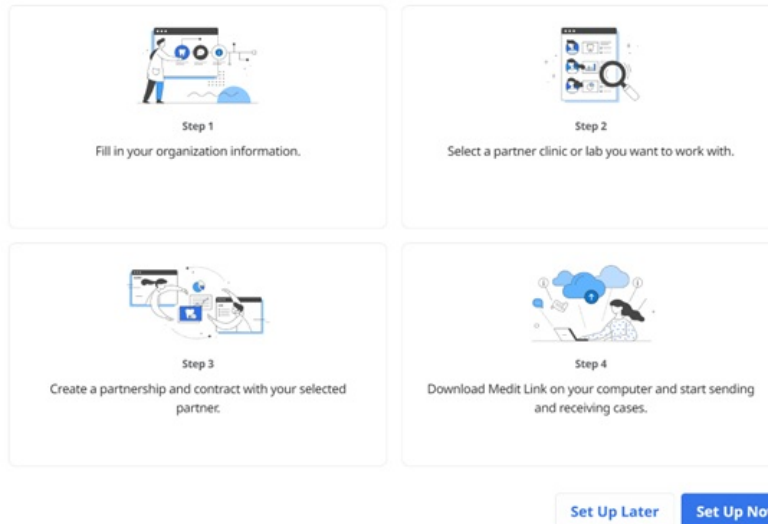

3. Κάντε κλικ στην «Ρύθμιση τώρα» και εισάγετε βήμα προς βήμα τις Πληροφορίες διεύθυνσης, Πληροφορίες εταιρείας, Πρόσθετες πληροφορίες και Πληροφορίες σαρωτή.

Εάν συμφωνήσατε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ κατά την εγγραφή, θα λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία από τον κατασκευαστή.

4. Οι πληροφορίες που εισάγονται στην αρχική σελίδα μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή στο Οι πληροφορίες μου > Η εταιρεία μου στην Ιστοσελίδα Medit Link.

Επισκόπηση


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link system. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main area shows a table of cases with filters for status (All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed) and a date range (2023-01-06 to 2023-04-06). The table lists 18 cases, with the first 10 visible. Each row includes a status badge, case name, patient name, form information (with a thumbnail), last modified date, scanning date, order date, and lab name. A 'Share' button is present for each case.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-

Dashboard

Επισκόπηση Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα – τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

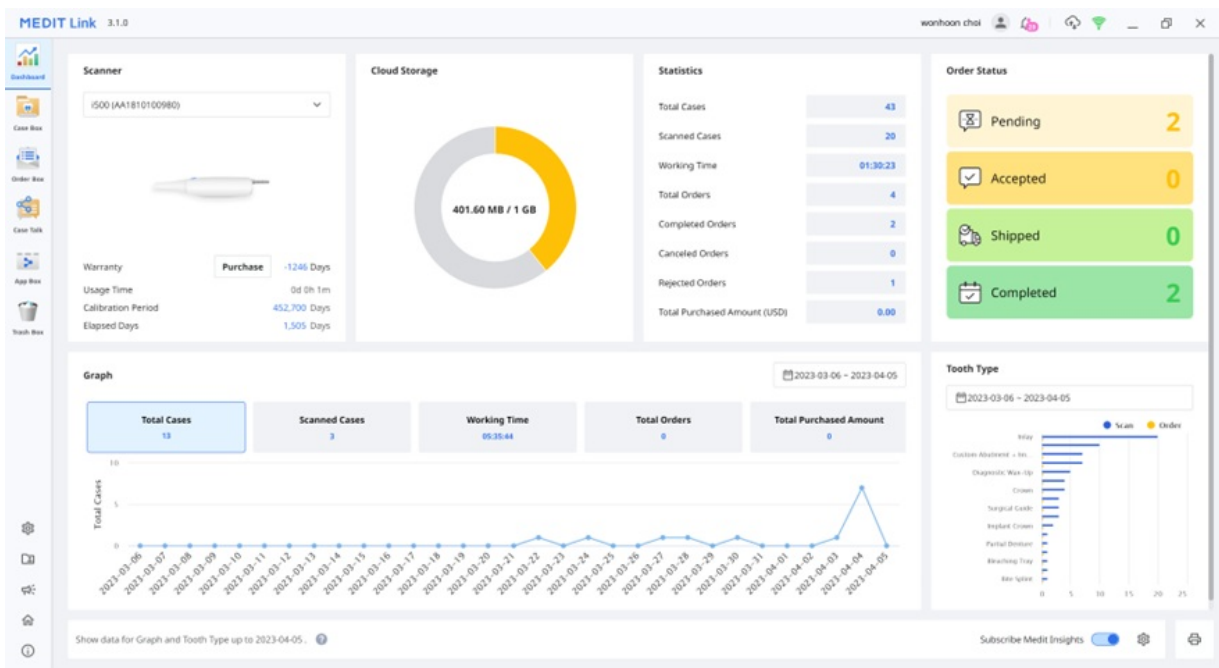

Τα γραφήματα και τα διαγράμματα στον πίνακα εργαλείων εμφανίζουν στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link.

Σαρωτής	Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς σαρωτές, συμπεριλαμβανομένου, της εγγύησης, του χρόνου χρήσης του σαρωτή, του διαστήματος βαθμονόμησης και του χρόνου που έχει περάσει από την βαθμονόμηση.
Αποθήκευση Cloud	Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας του cloud και της ποσότητας που χρησιμοποιείται.
Στατιστικά	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση εργασίας.
Κατάσταση παραγγελίας	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση παραγγελίας.
Γράφημα	Γράφημα πληροφοριών εργασίας ανά περίοδο.
Τύπος δοντιού	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των σαρώσεων και τις παραγγελίες ανά πληροφορίες θεραπείας.


Medit Insights

Το Medit Insights είναι μια υπηρεσία αναφοράς που σας βοηθά να αναλύσετε τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης σας.

Ήσημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Medit Insights

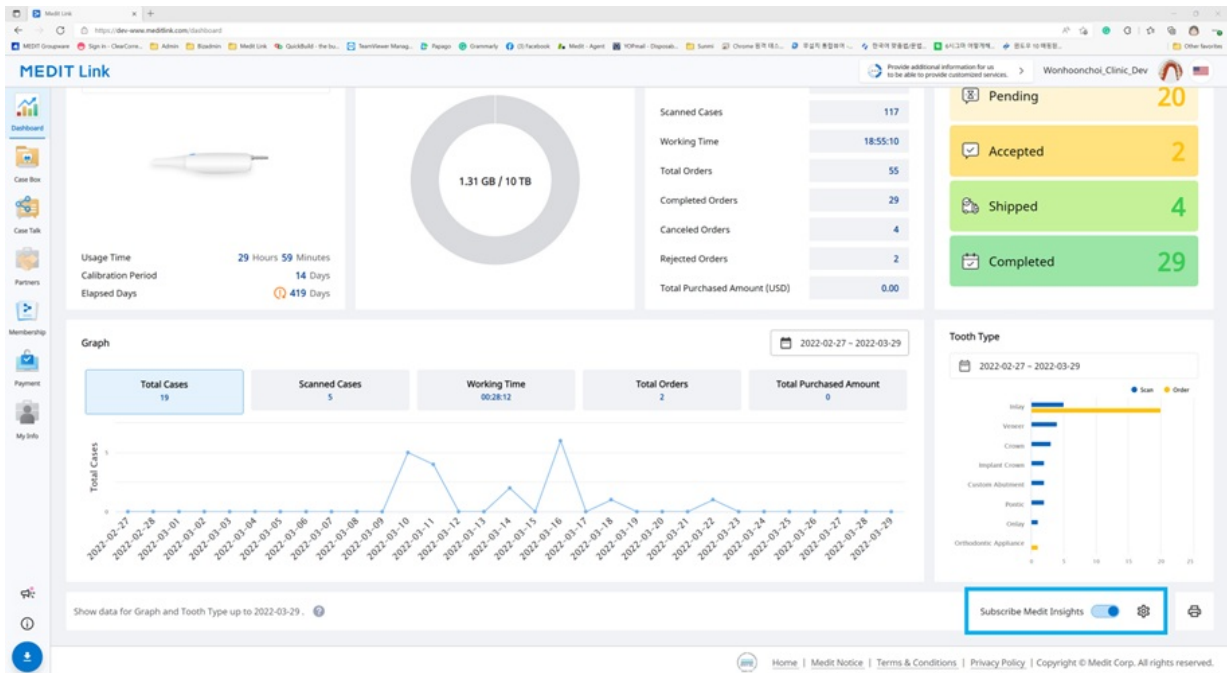

Εγγραφή στο Medit Insights

Μπορείτε να λάβετε ένα email αναφοράς τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαδικασία εγγραφής. Απλώς ενεργοποιήστε την «Εγγραφή σε Medit Insights».

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για τον λογαριασμό του Medit Link, μπορείτε να ορίσετε μια άλλη διεύθυνση email για να λαμβάνετε τα Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα, θα λαμβάνετε ένα email με στατιστικά στοιχεία όπως εμφανίζεται παρακάτω.

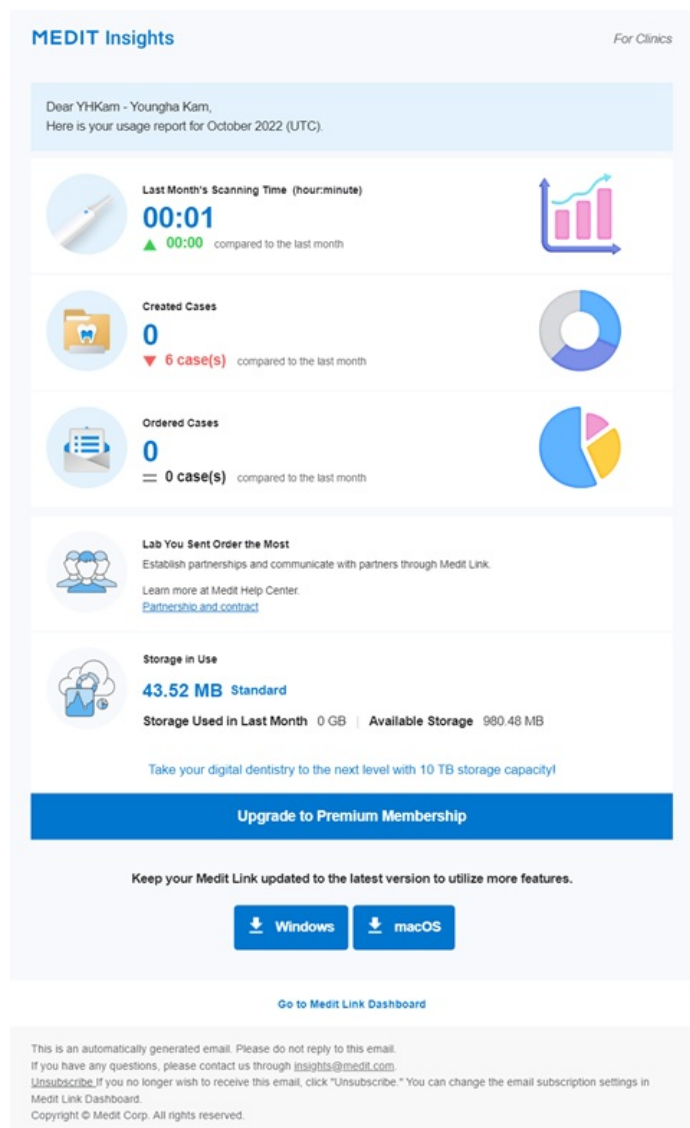


Banner	Το Medit παρέχει χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες εδώ. * Εάν δεν θέλετε να δείτε το banner, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμφωνία Μάρκετινγκ και Προώθησης από το Οι πληροφορίες μου> Ο λογαριασμός μου.
Στατιστικές πληροφορίες	Εμφανίζονται οι πληροφορίες στατιστικών, όπως ο χρόνος σάρωσης, η δημιουργία περιστατικών, οι πιο πολλές παραγγελίες εργαστηρίου κ.λπ.
Λήψη Medit Link	Το κουμπί παρέχει τον σύνδεσμο για λήψη του Medit Link.
Dashboard	Όλες οι στατιστικές πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες του Dashboard σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Dashboard.

Απεγγραφή από το Medit Insights

Απενεργοποιήστε την «Εγγραφή στο Medit Insights» στο Dashboard ή κάντε κλικ στην «Απεγγραφή» στο email που λάβατε.

Case Box/Work Box

Το Case Box (Κλινική) ή το Work Box (Lab) εμφανίζει όλα τα περιστατικά που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στην εφαρμογή του Medit Link. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος.

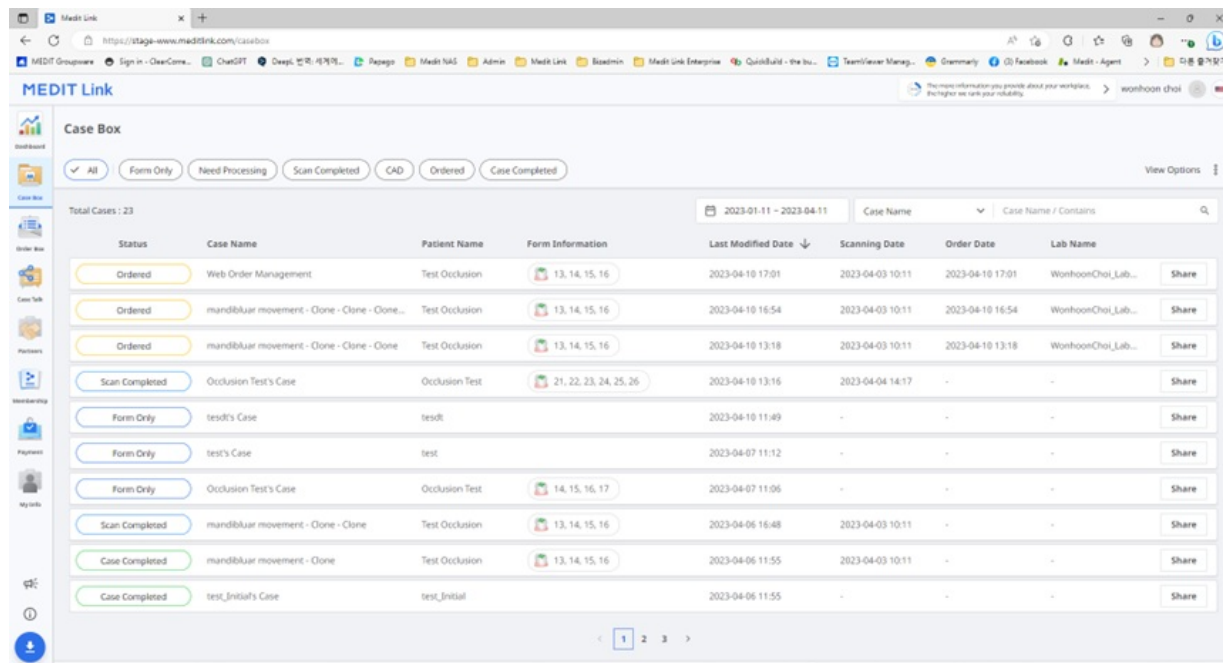


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. Below the filters, a table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Ordered	Web Order Management	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 17:01	2023-04-03 10:11	2023-04-10 17:01	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 16:54	2023-04-03 10:11	2023-04-10 16:54	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 13:18	2023-04-03 10:11	2023-04-10 13:18	WonhoonChoi_Lab...
Scan Completed	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-10 13:16	2023-04-04 14:17	-	-
Form Only	test's Case	test's	-	2023-04-10 11:49	-	-	-
Form Only	test's Case	test	-	2023-04-07 11:12	-	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-07 11:06	-	-	-
Scan Completed	mandibular movement - Clone - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-06 11:55	-	-	-

Φιλτράρισμα περιστατικού

Φιλτράρισμα κατά κατάσταση

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά με βάση την κατάστασή τους.

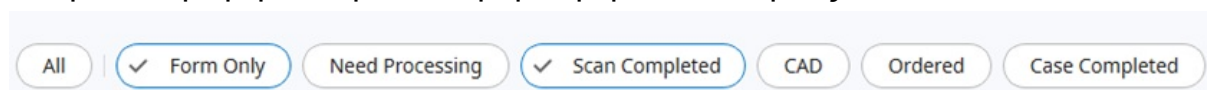

The screenshot shows the status filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. The 'Scan Completed' button is selected.

- Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην κατάσταση που θέλει να δει. Το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει μόνο περιστατικά με την επιλεγμένη κατάσταση.
- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Ο ακόλουθος τύπος κατάστασης παρέχεται βάσει του τύπου λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Εργαστήριο)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Φιλτράρισμα κατά διάρκεια

Μπορείτε να φιλτράρετε και να προβάλλετε περιστατικά που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά την καθορισμένη περίοδο.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.



The screenshot shows the duration filter input field with the date range 2020-08-10 ~ 2020-09-09.

2. Επιλέξτε το εύρος.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν εντός αυτής της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τη χθεσινή ημερομηνία.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Τελευταίες 90 ημέρες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις τελευταίες 90 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής ημέρας.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών αυτού του μήνα.
- Προηγούμενος μήνας: Εμφάνιση περιστατικών του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αναζήτησης για να αναζητήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

🔍

Επιλογές αναζήτησης με βάση τον λογαριασμό κλινικής/εργαστηρίου:

Case Box (Κλινική)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου
Work Box (Εργαστήριο)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID παραγγελίας

Λεπτομέρειες περιστατικού

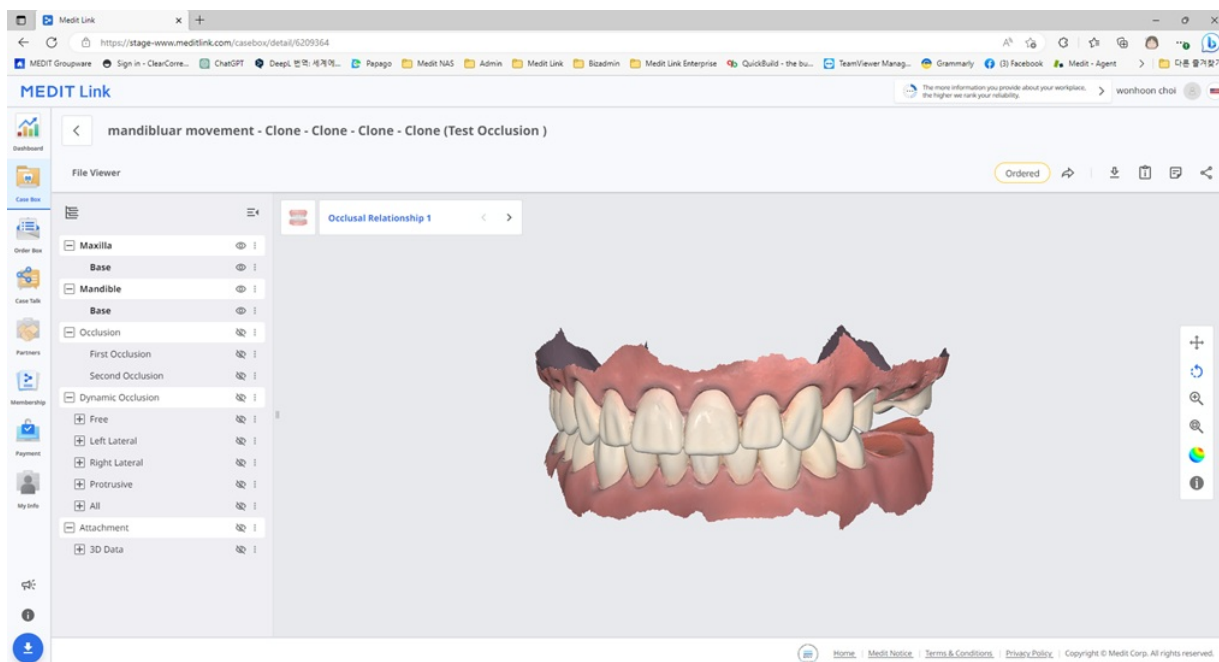

Τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης περιστατικών παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφάνιση της κατάστασης του περιστατικού.
	Μετάβαση σε λεπτομέρειες	Παρέχετε μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Λήψη	Κάντε λήψη των αρχείων στο περιστατικό στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις & Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινοποίηση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 3D δεδομένα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο ελεύθερα με οποιονδήποτε ή με συγκεκριμένα άτομα. Ένας κώδικας PIN ή μια ημερομηνία λήξης του συνδέσμου μπορεί να οριστεί για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.

Order Box/In Box

Το Order Box (Κλινική) ή In Box (Εργαστήριο) εμφανίζει παραγγελθείσα περιστατικά στην εφαρμογή του Medit Link.

Λεπτομέρειες παραγγελίας

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/ παραλαβή).
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
5	Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
6	Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.


Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες για την παραγγελία, όπως αναγνωριστικό παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημείωμα και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα που καθορίζετε, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του «Case Talk» στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

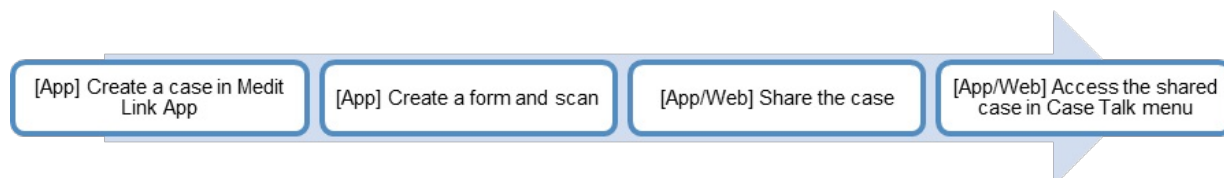

Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

Δημιουργία Case Talk

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε στο Case Box/Work Box.

1. Βρείτε ένα περιστατικό που θέλετε να κοινοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» στα δεξιά.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε.

Share through Case Talk

File List

☒	▼	Maxilla			
☒		Base	meditMesh	3,449KB	
☒	▼	Mandible			
☒		Base	meditMesh	2,926KB	
☒	▼	Occlusion			
☒		First Occlusion	meditMesh	662KB	
☒		Second Occlusion	meditMesh	611KB	
☒	▼	Face Scan Data			

6 items selected. 15.23MB/200 MB

Share With

Share with Anyone

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

3. Ορίστε τον τύπο της άδειας για κοινοποίηση και τις επιλογές κοινοποίησης.
4. Κάντε κλικ στη «Λήψη συνδέσμου» για να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο.

Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

+

⋮

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

☒ Allow comments

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Κοινοποίηση με	- Κοινοποίηση με οποιονδήποτε Δημιουργεί έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα αρχεία με οποιονδήποτε. - Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα Δημιουργεί και στέλνει έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο σε συγκεκριμένα άτομα.
Κοινοποίηση μέσω	Εάν επιλέξετε «Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα», μπορείτε να κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο με συγκεκριμένα άτομα με διάφορους τρόπους. - Διεύθυνση email - SMS - Συνεργάτες
Ημερομηνία λήξης	Ορίστε την ημερομηνία λήξης για τον σύνδεσμο. Μετά τη λήξη του συνδέσμου, τα άτομα με τα οποία κάνατε κοινοποίηση δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα αρχεία. Μπορείτε να παρατείνετε την περίοδο λήξης για έως και 90 ημέρες από σήμερα.
Κώδικας PIN	Ορίστε έναν διψήφιο κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων.
Κοινοποιήστε το όνομα του ασθενούς	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλα τα άτομα που διαθέτουν τον σύνδεσμο θα δουν το όνομα του ασθενούς.
Παραχωρήστε άδεια για λήψη	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τον σύνδεσμο μπορούν να κάνουν λήψη των αρχείων.

32

Επιτρέψτε σχόλια	• Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κοινόχρηστου συνδέσμου. • Εάν καταργήσετε την επιλογή, ο παραλήπτης θα μπορεί να δει μόνο τα σχόλιά σας, αλλά δεν θα μπορεί να προσθέσει τα δικά του.
Σχόλιο	Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στην ενότητα σχολίων.

Λεπτομέρειες Case Talk

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία στο κοινόχρηστο περιστατικό. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Λεπτομέρειες Case Talk.

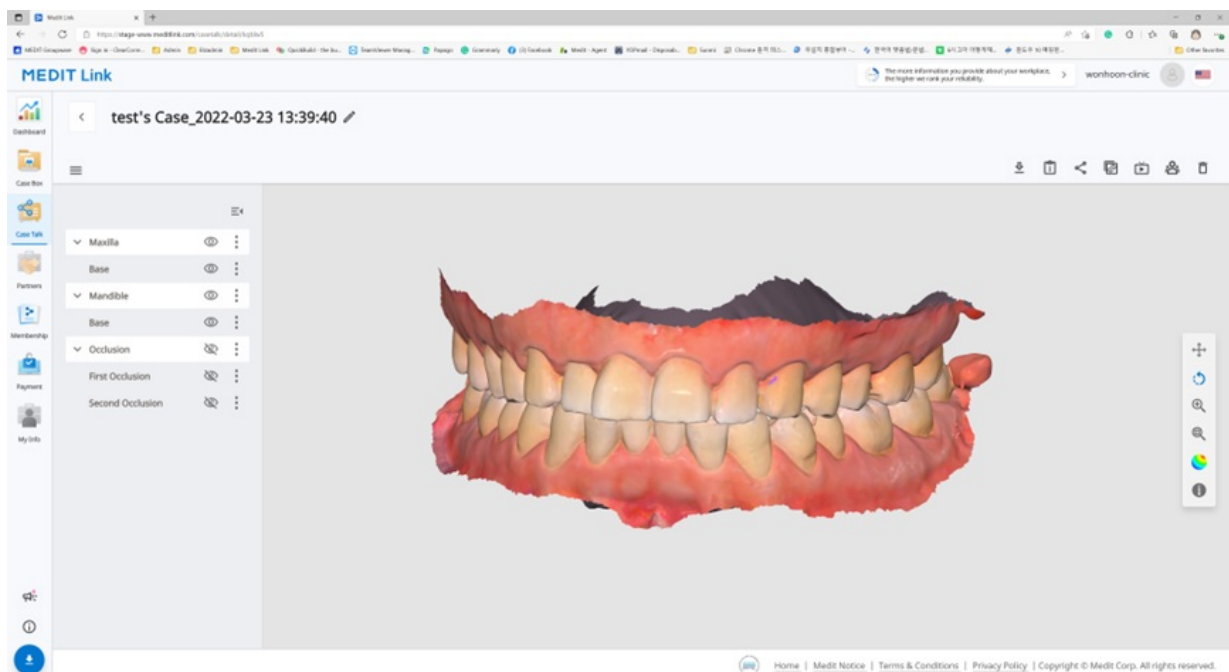

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων αυτού του περιστατικού στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τη ρύθμιση κοινοποίησης.
	Αντιγραφή συνδέσμου	Αντιγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο στο πρόχειρο. Ο αντιγραφμένος σύνδεσμος εμφανίζει τα κοινόχρηστα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Διαγραφή	Διαγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο. Ο διαγραφμένος κοινόχρηστος σύνδεσμος δεν είναι πλέον προσβάσιμος.

Ίσημείωση


Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Web Viewer

Μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα δεδομένα μέσω του Case Talk σε ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου.

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας σχολιασμούς και σχόλια.

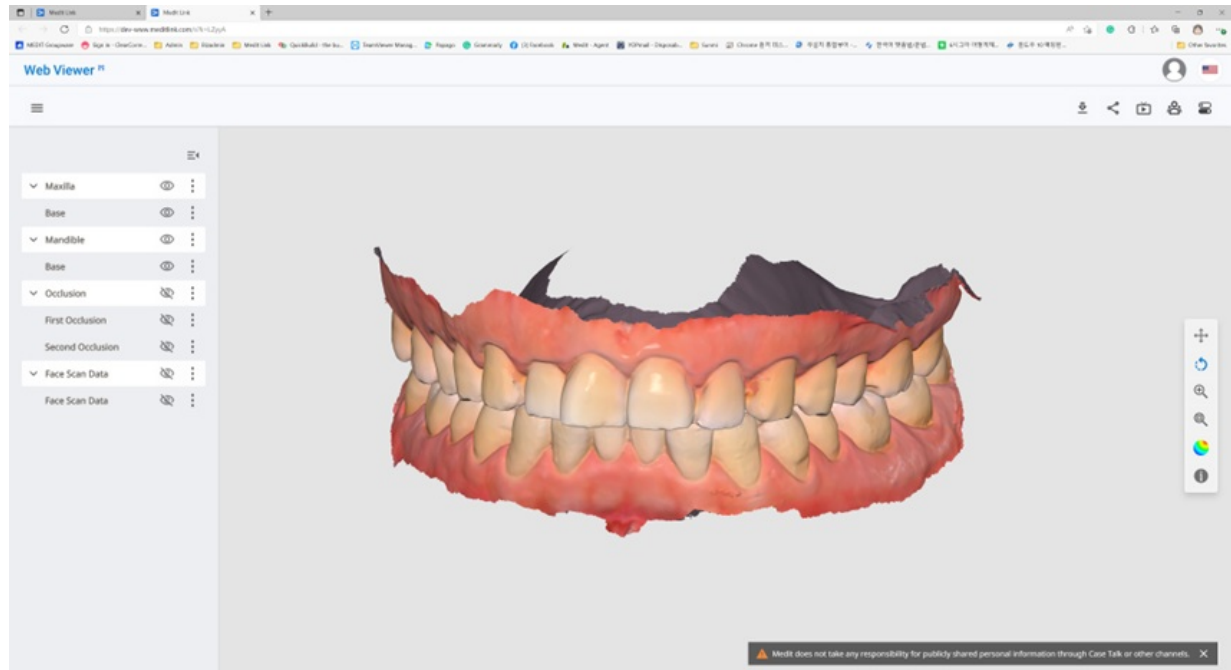

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων αυτού του περιστατικού στον υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις κοινοποίησης.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Αρίθμηση δοντιών	Αλλαγή του συστήματος σήμανσης των δοντιών.


iΣημείωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Live
- Συμμετέχοντες

Σχολιασμός

Μπορείτε να προσθέσετε σχολιασμούς σε μια καθορισμένη θέση στο 3D μοντέλο. Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο μπορεί να δει τους σχολιασμούς που προσθέτετε.

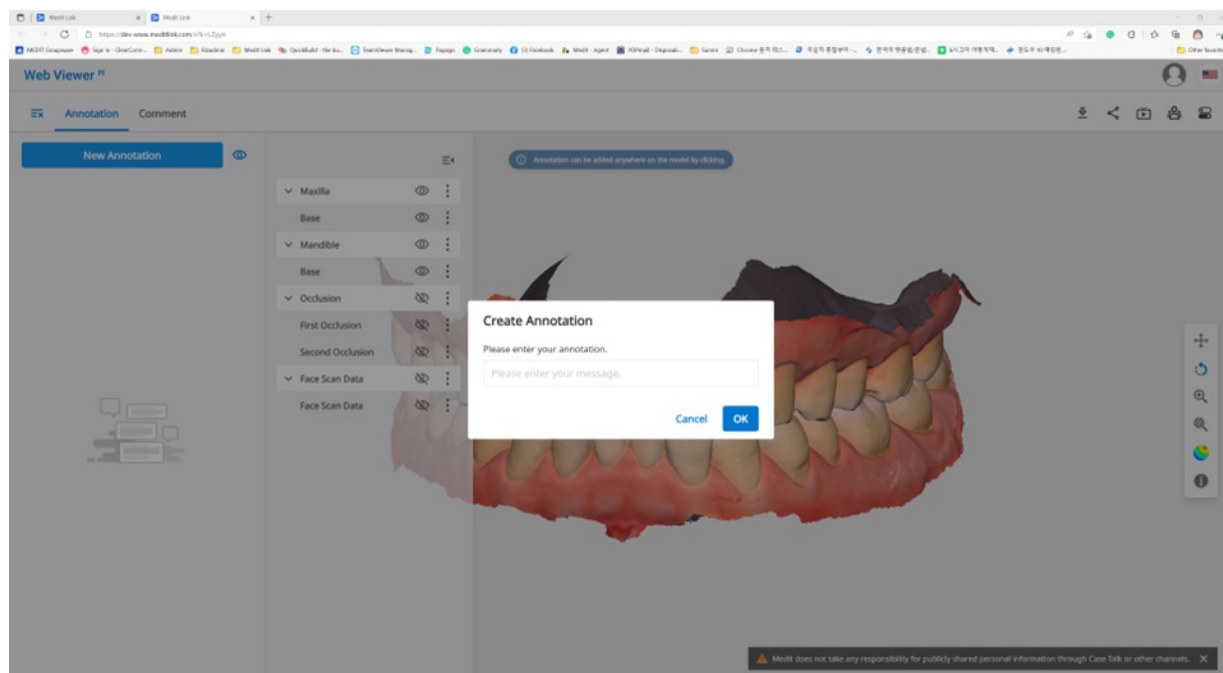

iΣημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχολιασμός

1. Βρείτε το εικονίδιο μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε την καρτέλα «Σχολιασμός». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Νέος σχολιασμός» για να προσθέσετε έναν σχολιασμό οπουδήποτε στα δεδομένα με ένα κλικ.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK» για να το αποθηκεύσετε.

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and two input fields: 'Please enter your annotation.' and 'Please enter your message'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχολιασμούς ως ένα απλό κανάλι επικοινωνίας. Κάντε κλικ στον σχολιασμό που δημιουργήθηκε για να εισάγετε μια απάντηση και πατήστε «Αποστολή».

This screenshot shows the interface for replying to an annotation. At the top, it shows the user 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below is the annotation text 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο μέσω της καρτέλας «Σχόλιο» στο μενού του Web Viewer.

Ήμειωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Σχόλιο

Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο


Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση της οθόνης σας σε πραγματικό χρόνο.

Ήμειωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Live

1. Κάντε κλικ στο «Live» για να κοινοποιήσετε την οθόνη του Web Viewer με τους συνδεδεμένους χρήστες.

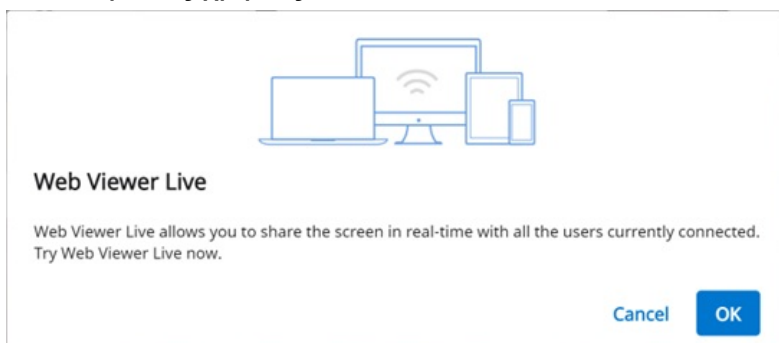



2. Κάντε κλικ στο «OK» για να ξεκινήσει η κοινοποίηση της οθόνης σας.
3. Άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο θα πρέπει να αποδεχτούν την κοινοποίηση οθόνης.
4. Η οθόνη του χρήστη που ξεκίνησε την κοινοποίηση οθόνης εμφανίζεται σε συγχρονισμό με την οθόνη του ατόμου που έλαβε το αίτημα.

Δέντρο δεδομένων




Όλα τα δεδομένα ομαδοποιούνται και εμφανίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε δεδομένα, να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια και ούτω καθεξής.

Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων

Εμφάνιση/ Απόκρυψη	Κάντε κλικ στο εικονίδιο «ματιού» για εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων από την προβολή. Ελέγξτε την ορατότητα των δεδομένων ως ομαδικό ή μεμονωμένο αρχείο.
-----------------------	--

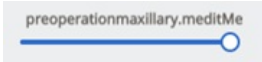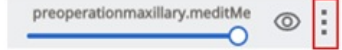Αδιαφάνεια	Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από ένα ορατό στοιχείο για να δείτε το ρυθμιστικό για αδιαφάνεια. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη διαφάνεια των δεδομένων σας. 
Εκτεταμένο μενού	Το εκτεταμένο μενού παρέχεται στη δεξιά πλευρά κάθε στοιχείου του Δέντρου δεδομένων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων εκτός από το τρέχον. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των τρεχόντων δεδομένων. • Αντιγραφή: Κλωνοποίηση δεδομένων για το τρέχον περιστατικό. • Εξαγωγή: Αποθήκευση δεδομένων σε τοπικό υπολογιστή. • Διαγραφή: Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα ή την ομάδα δεδομένων.

3D έλεγχοι μοντέλου

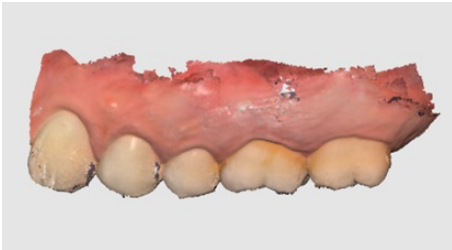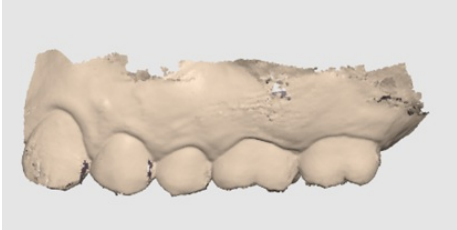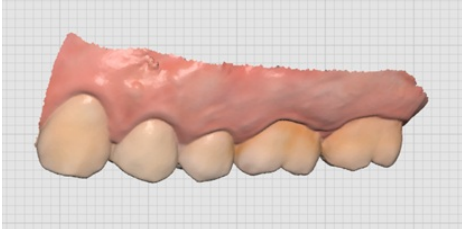+	Μετακίνηση	Μετακίνηση του μοντέλου.
↻	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
⊕	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
🔍	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίας εμφάνισης μοντέλου	Υφή ενεργοποιημένη 
		Υφή απενεργοποιημένη 
	Ρυθμίσεις	Πλέγμα ενεργοποιημένο 

	πλέγματος (mm)	Επικάλυμμα ενεργοποιημένο	Επικαλύψτε το μοντέλο με το πλέγμα.
		Πλέγμα απενεργοποιημένο	Απόκρυψη του πλέγματος.

Συνεργάτες

Μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς συνεργάτες για να ζητήσετε μια συνεργασία και να δείτε τη λίστα των υφιστάμενων συνεργατών και συνεργατών με συμβόλαιο.


Ίσημείωση

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα Google Maps δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

Αναζήτηση συνεργατών

Μπορείτε να αναζητήσετε χρήστες του Medit Link με βάση το όνομα ή/και τη διεύθυνση της επιχείρησής τους.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα συνεργασίας σε μία εταιρεία με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

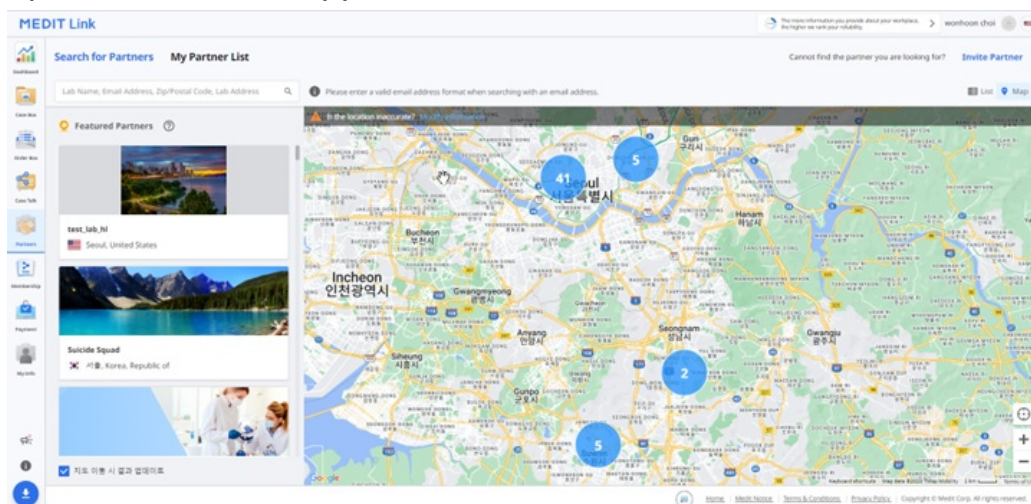


Η Λίστα συνεργατών μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνεργασίες και τα συμβόλαιά σας με όλες τις υπάρχουσες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σας από τη λίστα συνεργατών μου.

Σε τι διαφέρει ένα συμβόλαιο από μια συνεργασία;

Μόλις συνεργαστείτε με μια επιχείρηση, μπορείτε να ζητήσετε την σύμβαση σύμβασης με αυτήν την εταιρεία.

- Εάν ο συνεργάτης σας αποδεχτεί το αίτημα για σύμβαση από εσάς, μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή για τις παραγγελίες που έχετε υποβάλει.

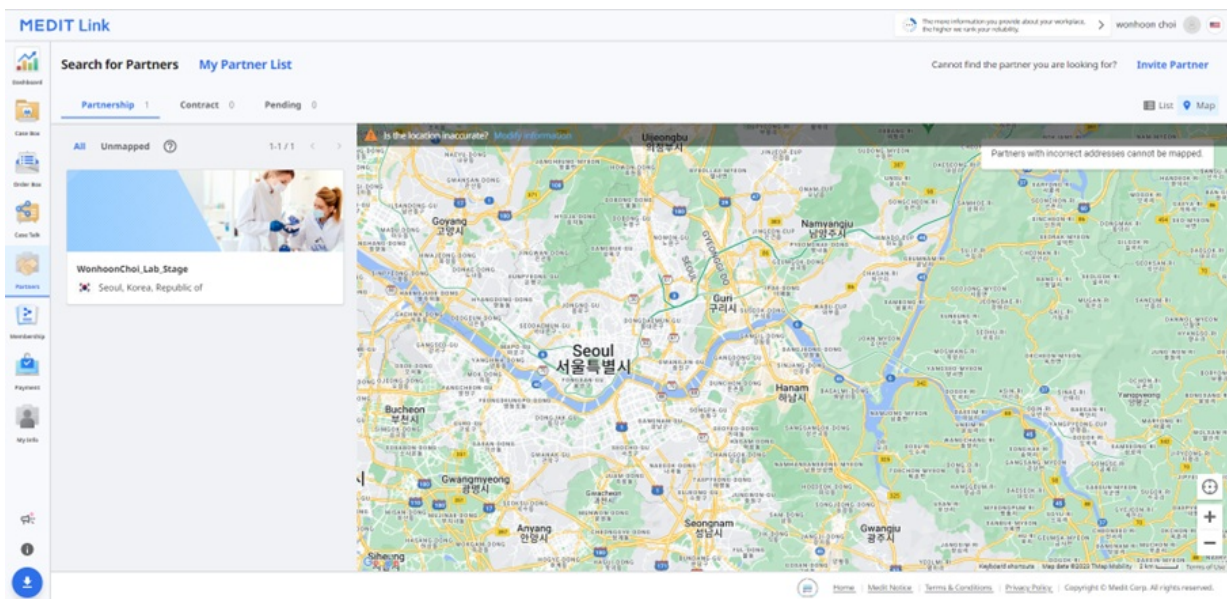

Ισημερίωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Συμβόλαιο

Πρόσκληση συνεργάτη

Εάν υπάρχει μία εταιρεία με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε, μπορείτε να κάνετε πρόσκληση για εγγραφή στο Medit Link. Η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα μόλις αποδεχτούν την πρόσκληση.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση συνεργάτη» στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email του προμηθευτή με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε και στείλτε του μια πρόσκληση με αίτημα συνεργασίας.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Μόλις η προσκεκλημένη εταιρεία αποδεχτεί την πρόσκληση και εγγραφεί στο Medit Link, η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Συνδρομή

Η πολιτική συνδρομής του Medit Link στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο εκτεταμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, επεκτείνοντας σταδιακά στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών που βασίζονται στην πλατφόρμα cloud.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας μια πιο συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία με τη νέα πολιτική συνδρομής μας.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής:

Standard

- Δωρεάν τυπικό πρόγραμμα για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες
- 1 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για νέους χρήστες

Premium

- Πρόγραμμα επί πληρωμή
- 10 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για χρήστες με πολλά περιστατικά και διάφορους τύπους δεδομένων
- Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος ενός μήνα

	Τυπικό	Premium
Αποθήκευση Cloud	1 GB	10 TB
Μηνιαία χρέωση	Δωρεάν	0,99 \$/μήνα
* Η Αποθήκευση Cloud δεν υπολογίζει τον χώρο που καταλαμβάνουν τα Ακατέργαστα δεδομένα.		

ΠΣημείωση

Τα προγράμματα συνδρομής θα είναι διαθέσιμα για το Medit Link Κίνας. Μπορείτε να λάβετε το πρόγραμμα Premium δωρεάν μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της λειτουργίας.

Συνδρομή

Το Πρόγραμμα μου

Στην αριστερή πλευρά, μπορείτε να δείτε ποιο πρόγραμμα συνδρομής διαθέτετε την τρέχουσα στιγμή. Εδώ μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση της συνδρομής σας ανά πάσα στιγμή.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Αποθήκευση Cloud

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud.

Cloud Storage

Set Period

 2018-01-01 – 2021-10-07

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



13.74 GB / 10 TB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐	 Raw Data Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	147.52 GB
☐	 Result Files & Attachments Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	13.74 GB


Ορισμός περιόδου	Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. • Όλα: Προβολή όλων των αρχείων. • Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία. • Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία. • Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.
Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρι. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς κ.λπ.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να απελευθερώσετε χώρο.

Εγγραφή

Εάν είστε επί του παρόντος σε Τυπικό πρόγραμμα ή σε Premium πρόγραμμα με κωδικό εξαργύρωσης, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε συνδρομή Premium.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται μέσω της υπηρεσίας Stripe (www.stripe.com).

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή».

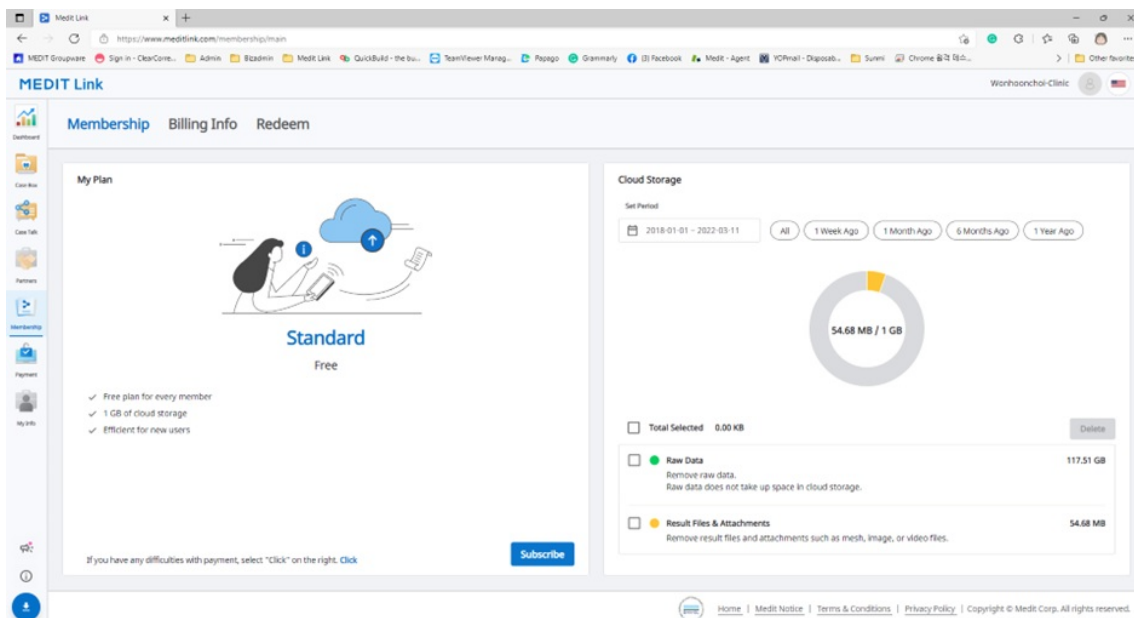

2. Ελέγξτε την περιγραφή του προγράμματος Premium και κάντε ξανά κλικ στην «Εγγραφή».

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Ελέγξτε την τιμή και τους όρους και τις πληροφορίες εισαγωγής που απαιτούνται για την πληρωμή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Η πληρωμή μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί, θα δείτε το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close

Απεγγραφή


Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Μετά την απεγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή Premium για τις υπόλοιπες ημέρες του συγκεκριμένου μήνα πληρωμής. Το πρόγραμμα σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

1. Κάντε κλικ στην «Απεγγραφή».

The screenshot shows the MEDIT Link web application. The 'My Plan' section displays the 'Premium' plan at 0.99\$ USD / Monthly. It lists benefits: a subscription plan, 10TB cloud storage, efficiency for many cases, and a one-month free trial after subscription. The next scheduled payment date is 2021-09-10. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The 'Cloud Storage' section shows 0.00 KB / 10 TB used, with options to delete 'Raw Scan Files' and 'Result & Attachment'.

2. Κάντε κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής».

Cancel Subscription

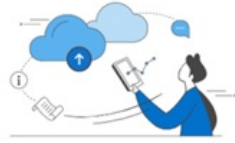

Premium
In Use



Standard
Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

3. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απεγγραφείτε, κάντε ξανά κλικ στην «Ακύρωση συνδρομής» στο νέο αναδυόμενο παράθυρο.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Η συνδρομή σας έχει ακυρωθεί.
5. Το πρόγραμμά σας θα αλλάξει σε Τυπικό από την επόμενη ημέρα πληρωμής και ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud θα περιοριστεί σε 1 GB. Εάν ξεπεραστεί ο αποθηκευτικός χώρος στο cloud, δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και οι λειτουργίες παραγγελίας και κοινοποίησης δεν θα είναι διαθέσιμες.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Πληροφορίες χρήσης

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό πληρωμών για τις εγγραφές μέλους, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμολογίου για κάθε πληρωμή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αλλάξετε την μέθοδο πληρωμής, η οποία θα εφαρμοστεί για την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Πώς να προσθέσετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία μεθόδου πληρωμής».

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Κάντε κλικ στην «Προσθήκη μεθόδου πληρωμής».

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάντε κλικ στην «Προσθήκη».

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Η μέθοδος πληρωμής που προστέθηκε πρόσφατα θα οριστεί ως προεπιλεγμένη και θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη πληρωμή.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Πώς να αλλάξετε μία μέθοδο πληρωμής

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού επέκτασης δίπλα στην μέθοδο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε στο παράθυρο διαλόγου χρέωσης.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Κάντε κλικ στο «Ορισμός προεπιλογής» για να ορίσετε την επιλεγμένη κάρτα ως προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

The screenshot shows a 'Billing' page with two main sections: 'CURRENT PLANS' and 'PAYMENT METHODS'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards listed. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. Below the cards is a '+ Add payment method' link. A red box highlights a menu with 'Make default' and 'Delete' options. At the bottom, there is a 'BILLING INFORMATION' section.

Εξαργύρωση

Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης που παρέχεται ως μέρος της προσφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Premium συνδρομή μαζί με τον κωδικό εξαργύρωσης.

Καταχώρηση κωδικού εξαργύρωσης

1. Εισάγετε τον κωδικό εξαργύρωσης και κάντε κλικ στην «Καταχώρηση».

2. Διαβάστε την ειδοποίηση και επιλέξτε «Καταχώρηση» ή «Εφαρμογή» στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.
 - **Καταχώρηση:** Καταχωρήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό εξαργύρωσης αργότερα μετά την εγγραφή.
 - **Εφαρμογή:** Καταχωρήστε και ενεργοποιήστε τον κωδικό εξαργύρωσης. Η έκπτωση της προσφοράς ισχύει άμεσα.

Ενεργοποίηση κωδικού εξαργύρωσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλούς κωδικούς εξαργύρωσης, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση» δίπλα στον κωδικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Εάν δεν υπάρχει κωδικός με κατάσταση «Ενεργός», αυτός που θα επιλέξετε θα εφαρμοστεί αμέσως. Εάν κάποιος κωδικός είναι ήδη ενεργοποιημένος, η κατάστασή του θα αλλάξει σε «Αναμονή» και θα χρησιμοποιηθεί αυτός που επιλέξατε. Όταν λήξει ο τρέχων κωδικός εξαργύρωσης, αυτός που βρίσκεται σε αναμονή θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
2. **Ίσημείωση**
Μόνο ένας κωδικός μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση «Αναμονής».

Medit Link

[Sign in - ClearCore...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome](#)
[로그인](#)
[로그아웃](#)

MEDIT Link

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)
[wonhoonchol_Clinic_Dev_3](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Πληρωμή

Ίσημείωση


Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link Κίνας.

- Πληρωμή

Λεπτομέρειες πληρωμής (Λογαριασμοί κλινικών & εργαστηρίων)

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό πληρωμών και συναλλαγών ανάμεσα σε εσάς και τους συνεργάτες σας μέσω της σελίδας Λεπτομέρειες πληρωμής.

Πληροφορίες πληρωμών λογαριασμού (Λογαριασμός εργαστηρίου μόνο)

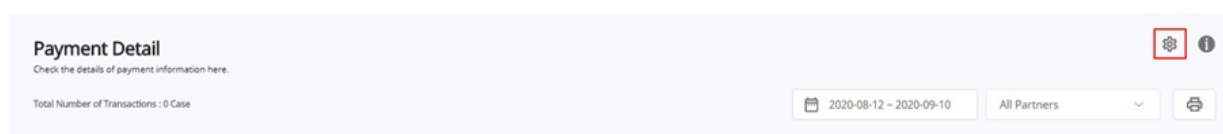

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμό διαχειριστή εργαστηρίου ώστε να τους επιτρέπει να εισάγουν πληροφορίες για να πληρώνονται από τους συνεργάτες σας.

- Θα πρέπει να εισάγετε τις πληροφορίες πληρωμών του λογαριασμού σας ώστε οι συνεργάτες σας να κάνουν παραγγελίες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ίσημείωση

Εάν επιλέξετε μια χώρα στην οποία υποστηρίζεται το Stripe, θα κατευθυνθείτε στο Stripe κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί για εγγραφή σε Stripe.

Μπορείτε να επιλέξετε τη Νότια Κορέα και, στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό τοπικού τραπεζικού λογαριασμού για να λάβετε την πληρωμή και το KCP θα επεξεργαστεί την πληρωμή σας.

Οι Πληροφορίες μου

Ο λογαριασμός μου

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή και να ελέγξετε την κατάσταση της συνδρομής σας.

The screenshot shows the 'My Account' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. The 'My Account' section is active. It includes a profile picture placeholder with a note: 'JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.' Below this are fields for 'Email Address' (coldgreentea@naver.com) with a 'Change Email Address' button, 'Password' with a 'Change Password' button, and 'Name' (wonhoonchoi_Lab3). There are also dropdown menus for 'Language' (Korean) and 'Country' (Korea, Republic of), with a note that the chosen language is applied to email and notifications. Below this is the 'Subscription Information' section, showing 'Standard' as the selected plan and a 'Subscribe' button. The 'Organization Information' section shows the 'Organization Name' (wonhoonchoi_Lab3) and an 'Edit Information' button.

Η εταιρεία μου (μόνο λογαριασμός διαχειριστή)

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας. Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς διαχειριστών.

The screenshot shows the 'My Organization' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. The 'My Organization' section is active. It includes a sub-navigation bar with 'Address Information', 'Organization Information', and 'Additional Information'. The 'Address Information' section is expanded, showing 'Address 1' (23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea) with a 'View Location on Map' button, and 'Address 2' (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.). Below these are fields for 'Zip/Postal Code' (02835), 'City' (Seoul), 'Country' (Korea, Republic of), and 'State/Province' (Seoul). There are also fields for 'Office Phone' (+82 01026088546) and 'Mobile Phone (Optional)' (+82 01026088546). A note at the bottom states: 'If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.'

Ο σαρωτής μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συνδεδεμένης συσκευής για τον λογαριασμό.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Ο τιμοκατάλογος μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή εργαστηρίου)

Μπορείτε να εισάγετε τα προϊόντα που προσφέρει το εργαστήριό σας και τις πληροφορίες της τιμής για κάθε προϊόν.

My AccountMy OrganizationMy ScannerMy Price List

TeethArchAED (€)

✓ All (99/557)Inlay (8/12)Onlay (8/12)Coping (10/17)Denture Coping (5/5)Crown (15/26)Pontic (23/36)Post & Core (3/4)Veneer (8/11)Implant Crown (12/53)Custom Abutment (2/3)Surgical Guide (1/1)Offset Substructure (4/5)Partial Denture (0/7)Diagnostic Wax-Up (0/1)Custom Abutment + Implant Crown (0/159)Custom Abutment + Coping (0/45)Post & Core + Crown (0/100)Post & Core + Coping (0/60)

Name	Type	Method	Material	Price
☒ 인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	56.03
☒ 인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒ 인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒ 인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒ 인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒ 인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒ 인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒ 인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

Πσημείωση

- Μόλις συνάψετε σύμβαση με έναν συνεργάτη, ο συνεργάτης σας θα μπορεί να παραγγείλει τα προϊόντα σας βάσει της δεδομένης λίστας προϊόντων και της τιμής.
- Εάν έχετε μόνο συνεργασία με τον συνεργάτη σας, το Medit Link δεν θα υποστηρίζει παραγγελίες που θα απαιτούν πληροφορίες τιμών.

Άνοιγμα του μενού

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Πληροφορίες Medit

Μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Medit Academy, το Medit Academy YouTube και το Κέντρο βοήθειας Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Λήψη εφαρμογής Medit Link

Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος εγκατάστασης από την ιστοσελίδα. Αυτό το μενού είναι χρήσιμο εάν χάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος ή εάν διαθέτετε ένα παλιό πρόγραμμα εγκατάστασης.

Πσημείωση

Το Medit Link ενημερώνεται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε σύνδεση στο διαδίκτυο.

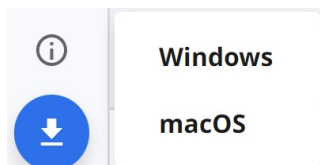

Επισκόπηση

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 시뮬한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

1	Γραμμή τίτλου	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link > Γραμμή τίτλου για λεπτομερείς πληροφορίες.
2	Μενού	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link > Μενού για λεπτομερείς πληροφορίες.
3	Εργαλεία και λειτουργίες	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link > Πρόγραμμα προβολής αρχείων και Εφαρμογή Medit Link > Επιλογές προβολής για λεπτομερείς πληροφορίες.
4	Λίστα περιστατικών	Ανατρέξτε στην Εφαρμογή Medit Link > Φιλτράρισμα και αναζήτηση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Επισκόπηση Box

Ροή εργασιών		Λογαριασμός κλινικής	Λογαριασμός εργαστηρίου
Βήμα 1	Δημιουργία περιστατικών	Case Box: Δημιουργήστε περιστατικά και κάντε εύκολη αναζήτηση και προβολή των περιστατικών με διάφορες επιλογές φιλτραρίσματος και αναζήτησης. Με τα δημιουργημένα περιστατικά, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με προγράμματα σάρωσης και προγράμματα CAD για να εργαστείτε σε αυτά.	


Βήμα 2	Παραγγελία/ Διαχείριση περιστατικών	Order Box: Διαχειριστείτε παραγγελθείσα περιστατικά. Παρέχονται λειτουργίες για τη διαχείριση της διαδικασίας από την παραγγελία έως την ολοκλήρωση των περιστατικών.	In Box: Διαχειριστείτε περιστατικά απο παραγγελίες που ελήφθησαν. Παρέχονται λειτουργίες για τη διαχείριση της διαδικασίας αποδοχής, απόρριψης, αποστολής και ολοκλήρωσης περιστατικών.
Βήμα 3	Εργασία σε σάρωση/CAD		Work Box: Διαχειριστείτε περιστατικά που έχουν προωθηθεί από το In Box ή που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με προγράμματα σάρωσης και προγράμματα CAD για να εργαστείτε σε αυτά.
Βήμα 4	Κοινοποίηση περιστατικών	Case Talk: Κάντε κοινοποίηση των δημιουργημένων περιστατικών με περιορισμούς, χωρίς περιορισμούς, με συγκεκριμένα άτομα ή άλλα εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.	
Βήμα 5	Συμπληρωματική ή πρόσθετη εργασία	App Box: Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία εφαρμογών που συμπληρώνουν τη ροή εργασιών σας στην ψηφιακή οδοντιατρική. Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών Medit ή τρίτων.	
Βήμα 6	Διαγραφή/ Επαναφορά περιστατικών	Trash Box: Προβολή, επαναφορά ή οριστική διαγραφή περιστατικών από το Trash Box.	

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα Box που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.

Τύπος λογαριασμού		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Λογαριασμοί κλινικής	Διαχειριστής	O	O	X	X	O	O	O
	Μέλος	O	X	X	X	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O
Λογαριασμοί εργαστηρίου	Διαχειριστής	X	X	O	O	O	O	O
	Μέλος	X	X	X	O	O	O * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	O

Γραμμή τίτλου

Η γραμμή τίτλου παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η κατάσταση δικτύου, ο συγχρονισμός στο cloud και οι ειδοποιήσεις.

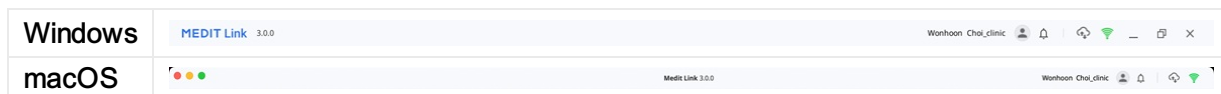

Οι Πληροφορίες μου

Οι πληροφορίες μου περιέχουν βασικές πληροφορίες χρήστη, όπως εικόνα προφίλ, όνομα εταιρείας, διεύθυνση email και όνομα χρήστη.

Παρέχει επίσης μια επιλογή αποσύνδεσης και συντόμευση στη σελίδα Ο λογαριασμός μου στην Ιστοσελίδα Medit Link.

- | | |
|---|---|
| 1 | Εμφάνιση εικόνας προφίλ. |
| 2 | Εμφάνιση του ονόματος της εταιρείας, της διεύθυνσης email και του ονόματος χρήστη. |
| 3 | Αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα λογαριασμό. |
| 4 | Μεταβείτε στην Ιστοσελίδα Medit Link ενώ είστε συνδεδεμένοι στον τρέχοντα λογαριασμό. Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες λογαριασμού που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας. |

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να δείτε ειδοποιήσεις που σχετίζονται με συμβάσεις, παραγγελίες και διαδικασίες εργασίας.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.
2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.
2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.
2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.
2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.
2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.
2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.
2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.
2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Επιλέξτε το πλαίσιο ώστε να εμφανίσετε μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα. |
| 2 | Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για να μετακινηθείτε αμέσως στο σχετικό περιστατικό ή την ιστοσελίδα. |

Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών

[illegible]

Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να μεταφορτωθούν.
Μεταφόρτωση όλων	Μεταφόρτωση όλων των περιστατικών στο cloud.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων μεταφόρτωσης.
	Μεταφόρτωση περιστατικού στο cloud.
	Ακύρωση μεταφόρτωσης του περιστατικού.
	Επανάληψη μεταφόρτωσης περιστατικού.

Συνολικά περιστατικά / Επιλεγμένα περιστατικά	Ελέγξτε τον αριθμό όλων/επιλεγμένων περιστατικών που πρέπει να ληφθούν.
Λήψη όλων	Λήψη όλων των περιστατικών στον υπολογιστή.
Ακύρωση όλων	Ακύρωση όλων των αιτημάτων λήψης.
	Λήψη περιστατικού στον υπολογιστή.
	Ακύρωση λήψης του περιστατικού.
	Επανάληψη λήψης περιστατικού.

Κατάσταση δικτύου

Το Medit Link σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες απρόσκοπτα όταν είστε συνδεδεμένοι σε διαδίκτυο.

Για να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης του διαδικτύου σας σε πραγματικό χρόνο, το εικονίδιο κατάστασης διαδικτύου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου.

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι καλή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τους ακόλουθους περιορισμούς:

- Ορισμένες λειτουργίες, όπως η παραγγελία περιστατικού, η δημιουργία περιστατικού, η κοινοποίηση μέσω Case Talk και ο συγχρονισμός στο cloud, θα γίνουν περιορισμένες.
- Η συνολική απόδοση της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί λόγω των επιπτώσεων του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισέλθετε στη Λειτουργία εκτός σύνδεσης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μόλις συνδεθείτε.

iΣημείωση

Το σύμβολο διαδικτύου υποδεικνύει την ταχύτητα απόκρισης μεταξύ της τρέχουσας περιοχής και του AWS (Amazon Web Service). Δεν ορίζει την ταχύτητα του διαδικτύου σας, επομένως ορισμένες φορές μπορεί να εμφανίζει την κατάσταση ως αδύναμη ή κακή, παρόλο που η ταχύτητα του διαδικτύου σας είναι αρκετά γρήγορη.


Εάν η άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο, η ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται ως αδύναμη ή κακή και η συνολική απόδοση του Medit Link μπορεί να είναι κακή. Σε αυτήν την περίπτωση, μην κάνετε κοινοποίηση του διαδικτύου σε άλλες διεργασίες.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα «Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων» αποτελεί τεράστιο μέρος της διαδικασίας του διαδικτύου. Εάν το σύμβολο εμφανίζει αδύναμη ή κακή κατάσταση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων και απενεργοποιήστε την «Αυτόματη μεταφόρτωση».

Μενού

Dashborad


Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα – τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

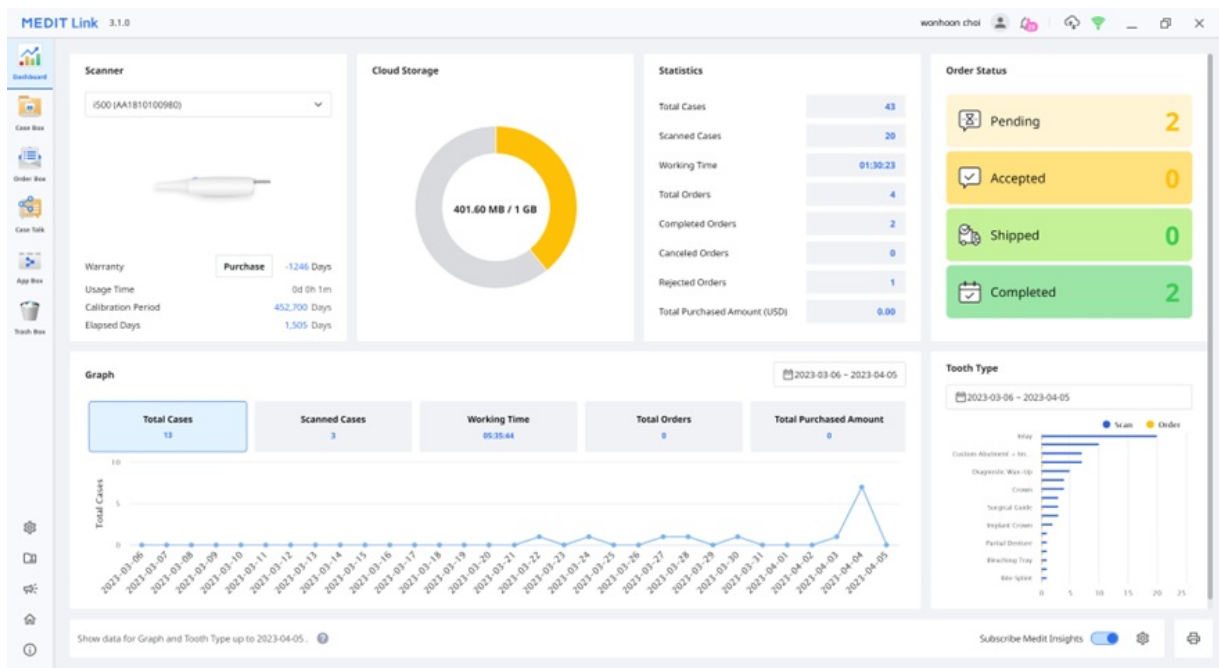

ΊΣημείωση

Ανατρέξτε στην [Ιστοσελίδα Medit Link > Dashboard](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dashboard και το Medit Insights.

Case Box/Work Box

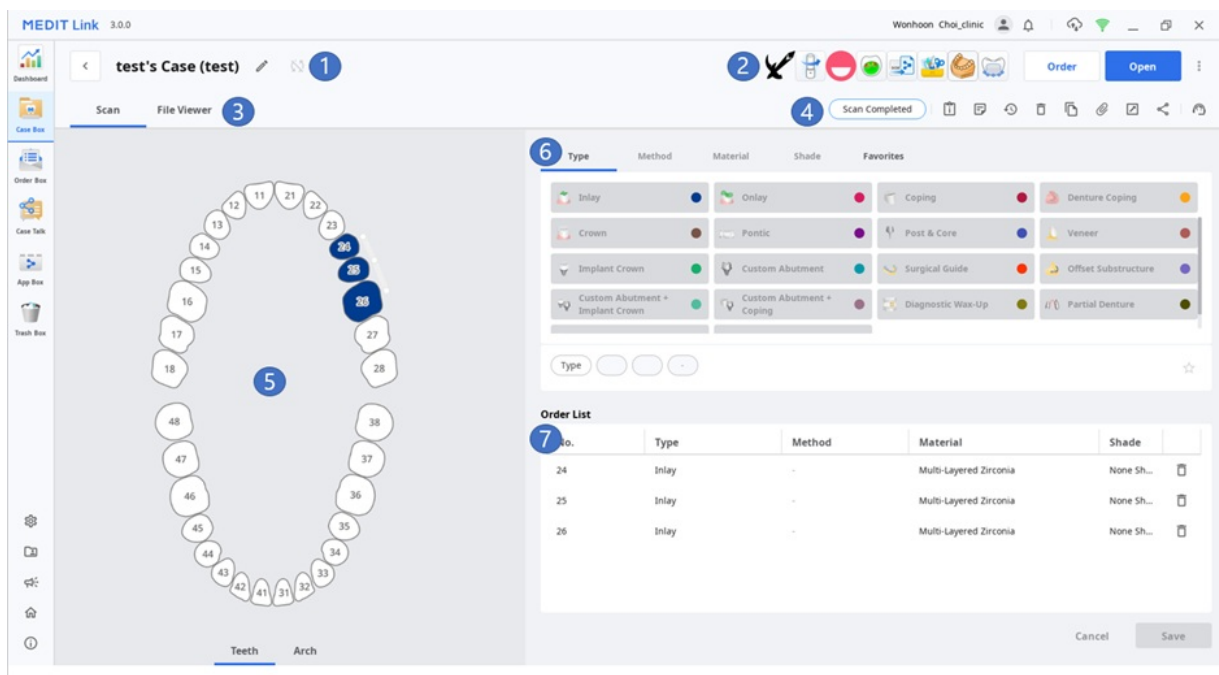

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε διαθέσιμες βασικές λειτουργίες: Παραγγελία/Σάρωση(Άνοιγμα)/Κουμπιά παραγγελίας και Εικονίδια εφαρμογών.
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Φόρμα, CAD και Πρόγραμμα προβολής αρχείων.
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων.
5	Εμφάνιση του UI για εγγραφή φόρμας στο επιλεγμένο πρόγραμμα CAD.
6	Παρέχετε τύπο/μέθοδο/υλικό/πληροφορίες απόχρωσης ώστε να γίνει επιλογή από τους χρήστες για τον επιλεγμένο αριθμό δοντιού.
7	Εμφανίστε τις πληροφορίες τύπου/μεθόδου/υλικού/πληροφοριών απόχρωσης που εφαρμόζονται στα επιλεγμένα δόντια.

Καρτέλες σε Case Box/Work Box

Φόρμα	CAD	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Η καρτέλα φόρμας παρέχει ένα UI για την εισαγωγή βασικών πληροφοριών για εργασίες σάρωσης, όπως τύπος, μέθοδος, υλικό για αριθμούς δοντιών και επιλογές σάρωσης. Οι πληροφορίες που εισάγετε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα σάρωσης και χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες παραγγελίας όταν κάνετε μια παραγγελία με τον συνεργάτη σας.	Η καρτέλα CAD παρέχει ένα UI για να ορίσετε επιλογές CAD. Οι πληροφορίες που ρυθμίσατε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα CAD.	Προβολή αρχείων αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από προγράμματα σάρωσης και CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Λειτουργίες σε Case Box/Work Box

Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφανίζει την κατάσταση του περιστατικού.
	Μετάβαση σε λεπτομέρειες	Παρέχει μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.
	Σημειώσεις & Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Ιστορικό περιστατικού	Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του περιστατικού. History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	Διαγραφή	Διαγραφή του περιστατικού. Δεν μπορείτε να διαγράψετε παραγγελθείσα περιστατικά ή περιστατικά που δημιουργήθηκαν εκτός σύνδεσης.
	Κλωνοποίηση	Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του τρέχοντος περιστατικού στο Case Box. Όλα τα δεδομένα θα αντιγραφούν στο κλωνοποιημένο περιστατικό. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αναπαραγωγή των πληροφοριών θεραπείας για τον ίδιο ασθενή ή στην πραγματοποίηση πρόσθετης παραγγελίας με τις ίδιες πληροφορίες ή αρχεία.
	Επισύναψη	Επισύναψη αρχείων σε διάφορες μορφές.
	Εξαγωγή	Εξαγωγή αρχείων σάρωσης ή αποτελεσμάτων CAD στον τοπικό υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή αρχείου που προτιμάτε κατά την εξαγωγή αρχείων. Τα εξαγόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εργασία σε λογισμικό CAD και CAM.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινοποίηση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα. Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση του συνδέσμου ελεύθερα με οποιονδήποτε ή μόνο με συγκεκριμένα άτομα. Ένας κώδικας PIN ή μια ημερομηνία λήξης του συνδέσμου μπορεί να οριστεί για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
	Υποβολή αιτήματος υποστήριξης	Μεταβείτε σε μια σελίδα Κέντρου βοήθειας της Medit για να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης.

Order Box/In Box

- 1 Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
- 2 Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/ παραλαβή).
- 3 Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων
- 4 Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
- 5 Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
- 6 Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.

Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία, όπως αριθμός παραγγελίας, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημειώσεις και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα που καθορίζετε, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.


Η υπηρεσία Case Talk απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

Trash Box

Το Trash Box αποθηκεύει προσωρινά τα διαγραφμένα περιστατικά. Οποιαδήποτε περιστατικό στο Trash Box μπορεί είτε να αποκατασταθεί είτε να διαγραφεί οριστικά.

⚠ Προσοχή

Τα δεδομένα που διαγράφονται από το Trash Box θα διαγραφούν οριστικά από τον υπολογιστή σας και τον διακομιστή και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

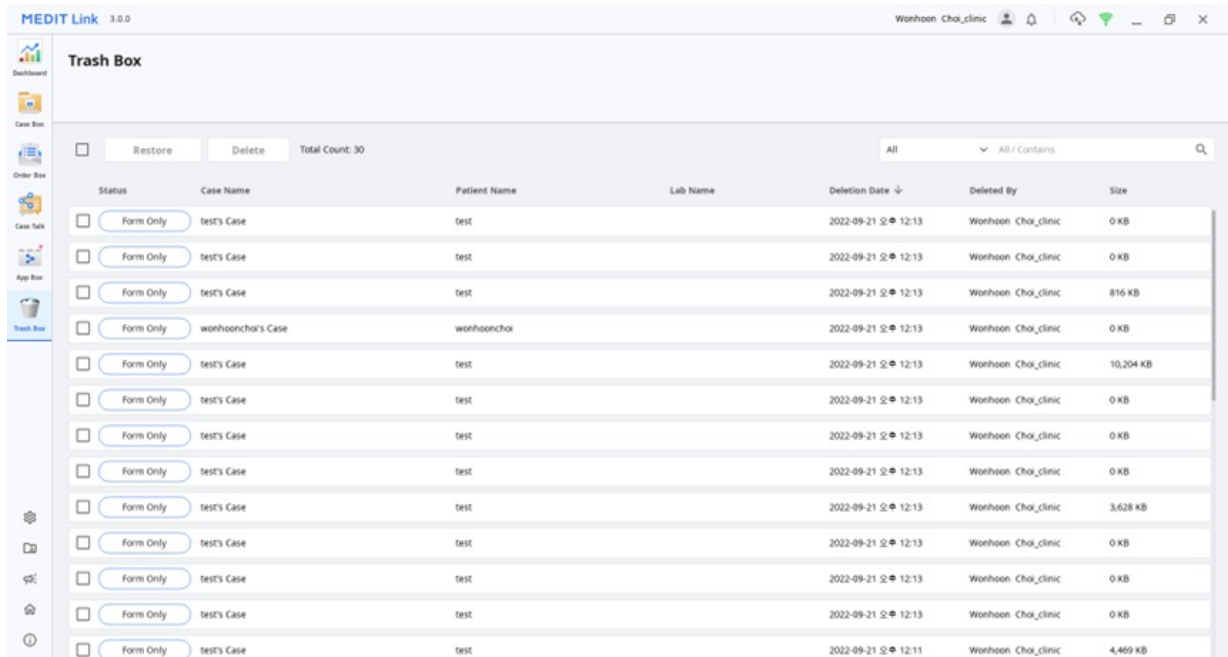

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
☐ Form Only	worhoonchoi's Case	worhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Ρυθμίσεις

Ανατρέξτε στο [Εφαρμογές Medit Link > Ρυθμίσεις](#) για λεπτομερείς πληροφορίες στο παράθυρο Ρυθμίσεις.

Διαχείριση ασθενή

Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε ασθενείς στο παράθυρο Διαχείρισης ασθενή.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	테스트				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Close

Προσθήκη νέου ασθενή

1. Κάντε κλικ στο «Νέος ασθενής».

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Νέος ασθενής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Διαγραφή ασθενή

Προειδοποίηση

Μπορείτε να διαγράψετε έναν ασθενή μόνο όταν δεν υπάρχουν περιστατικά για αυτόν.

1. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I.Abument2				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abument Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	suljadholf				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Κάντε κλικ στην «Διαγραφή».

Συγχώνευση ασθενών

Μπορείτε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά πολλών ασθενών για έναν ασθενή.

1. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /scan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9 /scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	SCX-PIE				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test21231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. Κάντε κλικ στην «Συγχώνευση ασθενή».
3. Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο για τον οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά.
4. Όλα τα περιστατικά συγχωνεύονται στον ασθενή-στόχο και διατηρούνται οι πληροφορίες ασθενούς για τον ασθενή-στόχο.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να προχωρήσετε στη συγχώνευση.

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Medit Link

Θα μεταβείτε στην Ιστοσελίδα του Medit Link κάτω από το λογαριασμό από τον οποίο είστε συνδεδεμένοι.

Πληροφορίες Medit

Μπορείτε να λάβετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Medit Link. Αποκτήστε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους της Medit, όπως το Medit Academy, το Medit Academy YouTube και το Κέντρο βοήθειας Medit.

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

Ρυθμίσεις

Γενικά

Παρέχει επιλογές για τη συνολική ρύθμιση του συστήματος.

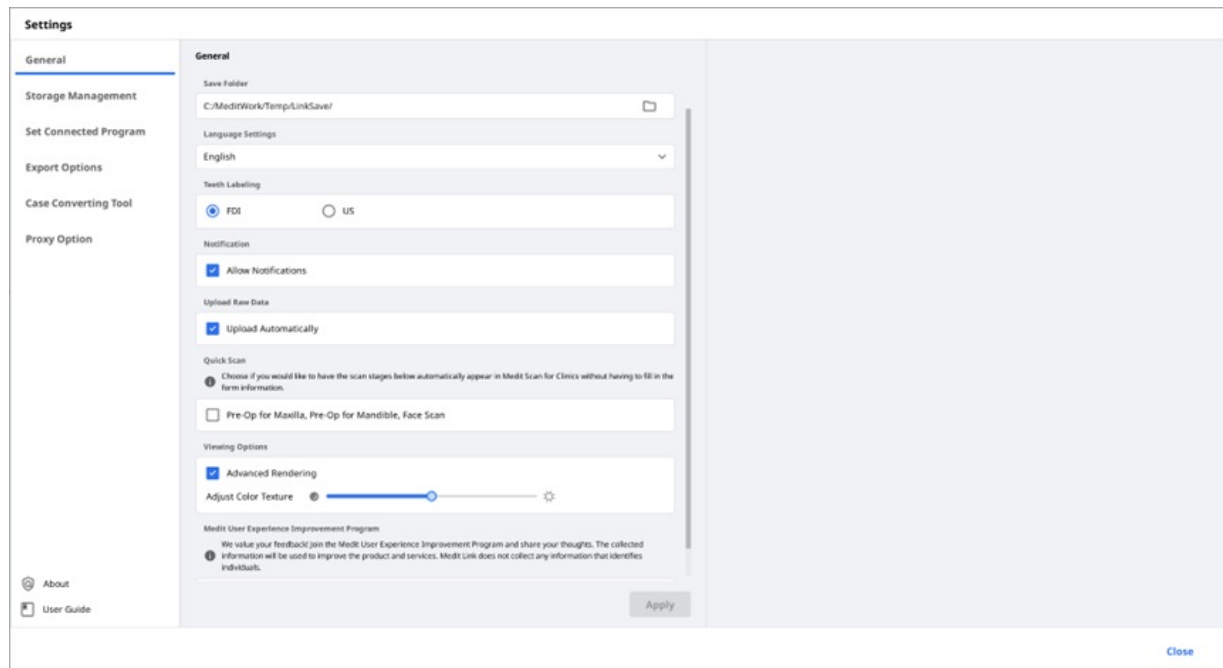


Αποθήκευση φακέλου	Καθορίστε έναν φάκελο για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων δεδομένων που δημιουργούνται από το Medit Link και τα συνδεδεμένα με αυτό προγράμματα.
Ρυθμίσεις γλώσσας	Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα.
Αρίθμηση δοντιών	Επιλέξτε ένα σύστημα αρίθμησης δοντιών μεταξύ του FDI και των ΗΠΑ.
Ειδοποιήσεις	Όταν είναι επιλεγμένο, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις προγράμματος.
Μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων	Όταν είναι επιλεγμένο, τα ακατέργαστα δεδομένα μεταφορτώνονται αυτόματα στο cloud. Βοηθά στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχικών δεδομένων και την απρόσκοπτη σάρωση όταν χρησιμοποιείτε το Medit Link με τον ίδιο λογαριασμό από άλλον υπολογιστή. Το αρχικό αντίγραφο ασφαλείας στο cloud ισχύει μόνο για δεδομένα που αποκτήθηκαν από το Medit Scan for Clinics.
Γρήγορη σάρωση	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα τα παρακάτω στάδια σάρωσης στο Medit Scan for Clinics χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις πληροφορίες της φόρμας. • Προεπεμβατικά άνω γνάθου • Προεπεμβατικά κάτω γνάθου • Σάρωση προσώπου
Επιλογές	Προηγμένη απόδοση
	Όταν είναι επιλεγμένο, το 3D μοντέλο εμφανίζεται σε πιο ζωντανή και ρεαλιστική απόδοση.

προβολής	Ρυθμίστε την υφή του χρώματος	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του 3D μοντέλου. * Τα χρώματα που προκύπτουν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το Medit Link όταν κάνετε άνοιγμα των ίδιων δεδομένων από άλλο λογισμικό.
Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρήστη της Medit	Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη της Medit. - Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. - Δεν συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.	

Διαχείριση αποθήκευσης

Ελέγξτε και διαχειριστείτε τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο και αυτόν του cloud.

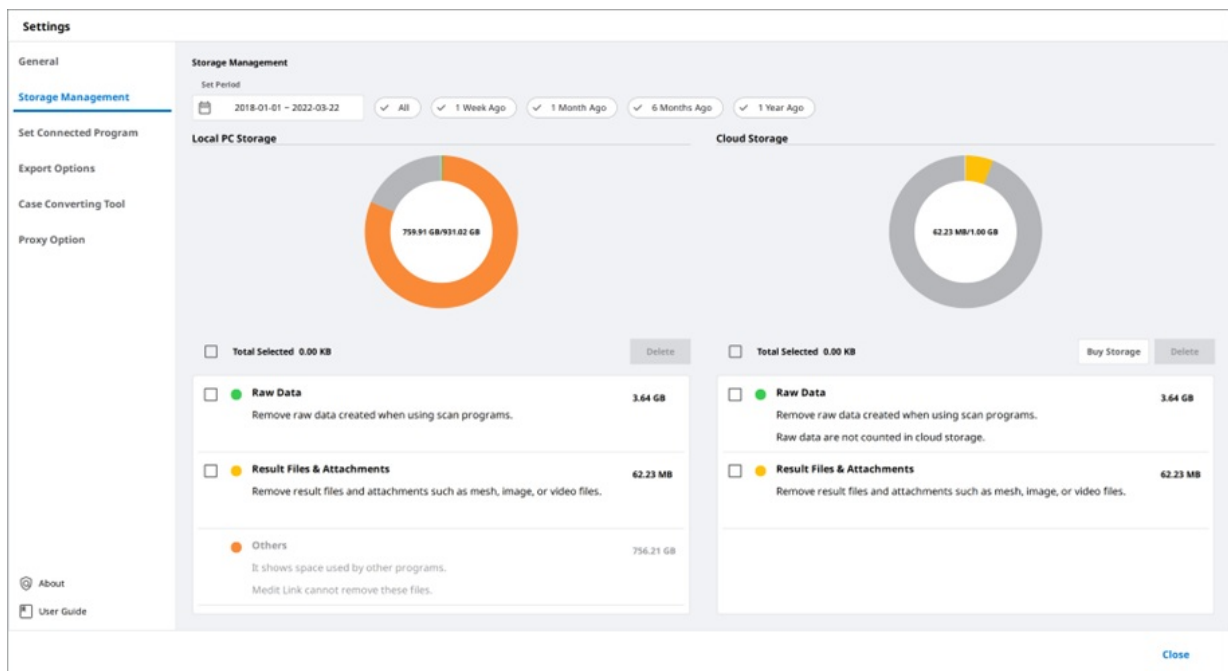

Ορισμός περιόδου

Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου.

- Όλα: Προβολή όλων των αρχείων.
- Πριν από 1 εβδομάδα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει μια εβδομάδα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 μήνα: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα μήνα μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 6 μήνες: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει έξι μήνες μετά τη δημιουργία.
- Πριν από 1 χρόνο: Δείτε τα αρχεία που έχουν περάσει ένα χρόνο μετά τη δημιουργία.

Τοπικός αποθηκευτικός χώρος

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή.

Ακατέργαστα δεδομένα	Αφαιρέστε τα επιλεγμένα ακατέργαστα δεδομένα από τον υπολογιστή. Εάν τα ακατέργαστα δεδομένα έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
----------------------	--

Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Καταργήστε τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων από τον υπολογιστή, όπως πλέγμα, εικόνες και βίντεο. Εάν αυτά τα αρχεία έχουν ήδη μεταφορτωθεί στο cloud, μπορείτε να κάνετε λήψη και να τα χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε.
Υπόλοιπα	Δείτε τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συστήματος και άλλων προγραμμάτων. Εμφανίζει την αποθηκευτική δυνατότητα του υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα αρχεία από το Medit Link.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον υπολογιστή.


Αποθήκευση Cloud

Διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο του cloud.

Ακατέργαστα δεδομένα	Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν καταλαμβάνουν χώρο στον αποθηκευτικό χώρο στο cloud, επομένως δεν θα βρίσκονται στο διάγραμμα ρι. Ωστόσο μπορείτε να διαχειριστείτε τα ακατέργαστα δεδομένα από εδώ εάν χρειαστεί, π.χ. να τα διαγράψετε για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς κ.λπ.
Αποτέλεσμα & Συνημμένο	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Αγορά αποθηκευτικού χώρου	Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε Τυπικό πρόγραμμα, κάντε εγγραφή σε Premium για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό σας χώρο στο cloud.
Διαγραφή	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να ελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος

Διαχειριστείτε τα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση σε Medit Link.

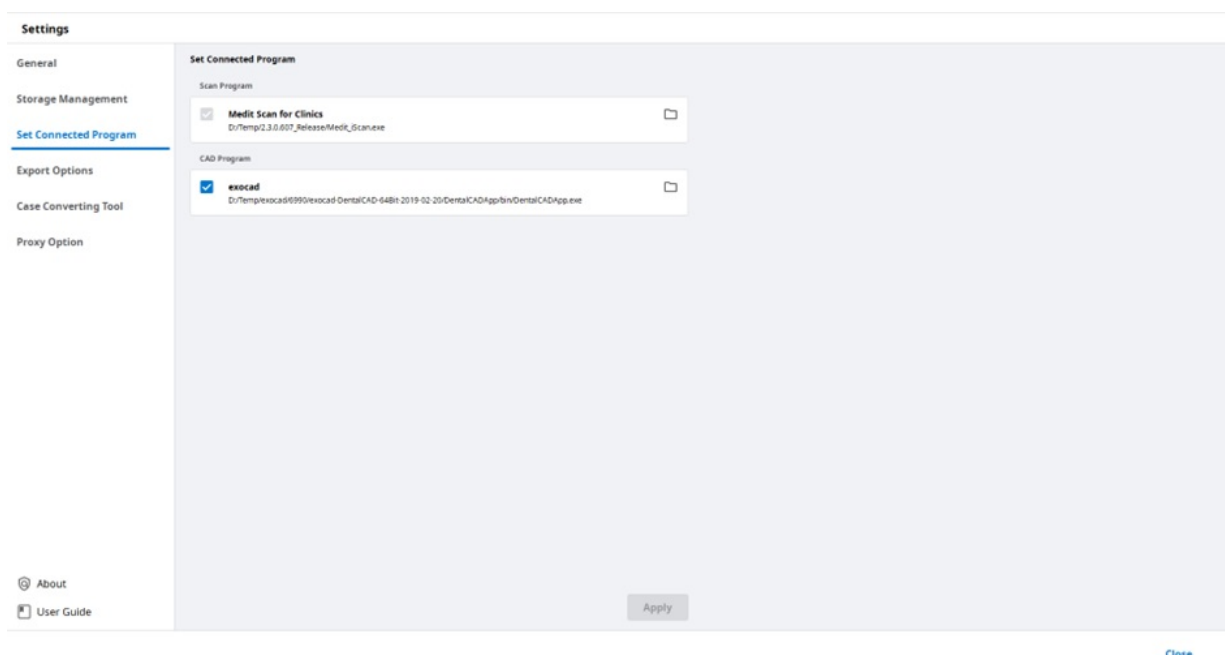

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα προγράμματα:

	Λογαριασμός κλινικής	Λογαριασμός εργαστηρίου
--	----------------------	-------------------------

Πρόγραμμα σάρωσης	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Πρόγραμμα CAD	exocad	exocad

Ήσημείωση

Η ενσωμάτωση των ακόλουθων υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμη σε Medit Link για Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Επιλογές εξαγωγής

Ορίστε τον τρόπο εξαγωγής αρχείων από το Medit Link.


The screenshot displays the 'Settings' window with the 'Export Options' tab selected. The left sidebar contains links for General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options, Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is divided into several sections: CAD Type (set to Maestro), Export Files To (a file path), Mesh Format (with PLY selected), Image Format (with PNG selected), Compress & Combine (with 'Always ask when exporting' selected), and two 'Rule for' sections for Folder Name and File Name. These rule sections provide templates for naming files based on patient and order information. An 'Apply' button is at the bottom right, and a 'Close' button is at the bottom right of the window.

Τύπος CAD	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θα προσαρμόσει τα αποτελέσματα με βάση την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του τελικού αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση & Συνδυασμός	Συμπίεση αρχείων: Κάντε συμπίεση όλων των αποτελεσμάτων σε ένα μόνο αρχείο. Συνδυασμός μεμονωμένων αρχείων: Συνδυάστε όλα τα αποτελέσματα για την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο σε ένα αρχείο. Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα προγράμματα που δεν μπορούν να εισάγουν και να λειτουργήσουν με πολλά αρχεία, μπορείτε να τα συγχωνεύσετε σε ένα ώστε να λειτουργούν με αυτά τα προγράμματα.

Επιλογές όταν προυπάρχει ίδιος φάκελος ή αρχείο.	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ενέργεια για περιστατικά όπου ο ίδιος φάκελος ή το όνομα αρχείου υπάρχει στη διαδρομή προορισμού. • Ερώτηση πάντα κατά την εξαγωγή. • Εξαγωγή νέου αρχείου και αντικατάσταση των υπαρχόντων αρχείων. Το αρχείο που είναι αποθηκευμένο τη δεδομένη στιγμή θα χαθεί. • Δημιουργήστε ένα φάκελο και εξαγάγετε τα αρχεία
Κανόνες για ονομασία φακέλου	Καθορίστε κανόνες για τη δημιουργία ονομασιών φακέλου κατά την εξαγωγή αρχείων. Οι καθορισμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε ονομασίες φακέλων και το εξαγόμενο αρχείο θα αποθηκευτεί στον δημιουργημένο φάκελο. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας
Κανόνες για ονομασία αρχείου	Καθορίστε κανόνες για την ονομασία του εξαγόμενου αρχείου. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας


Εργαλείο μετατροπής περιστατικών

Μετακίνηση περιστατικών μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών.

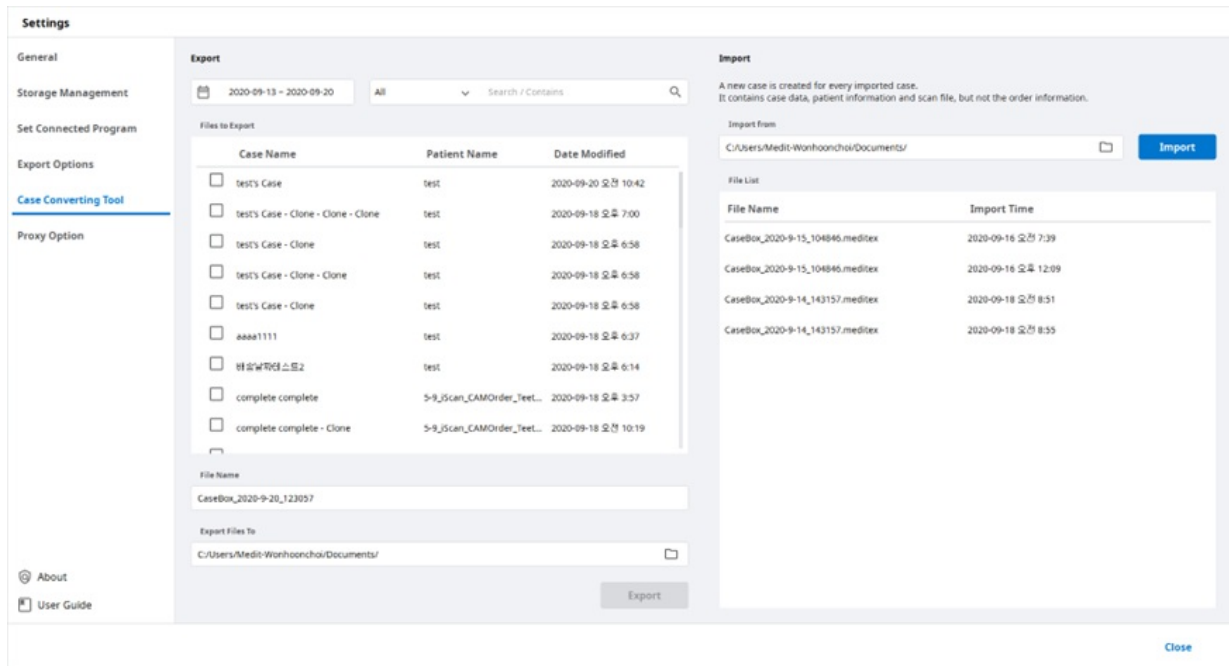


Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο μετατροπής περιστατικών


1. Ανοίξετε το Medit Link και κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις».

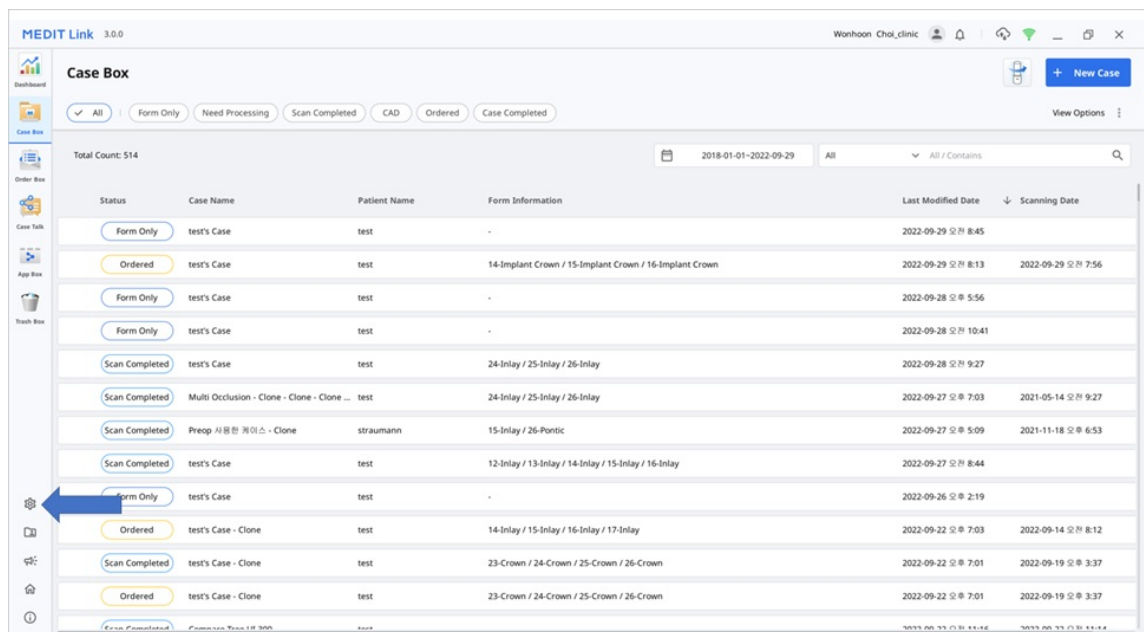

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

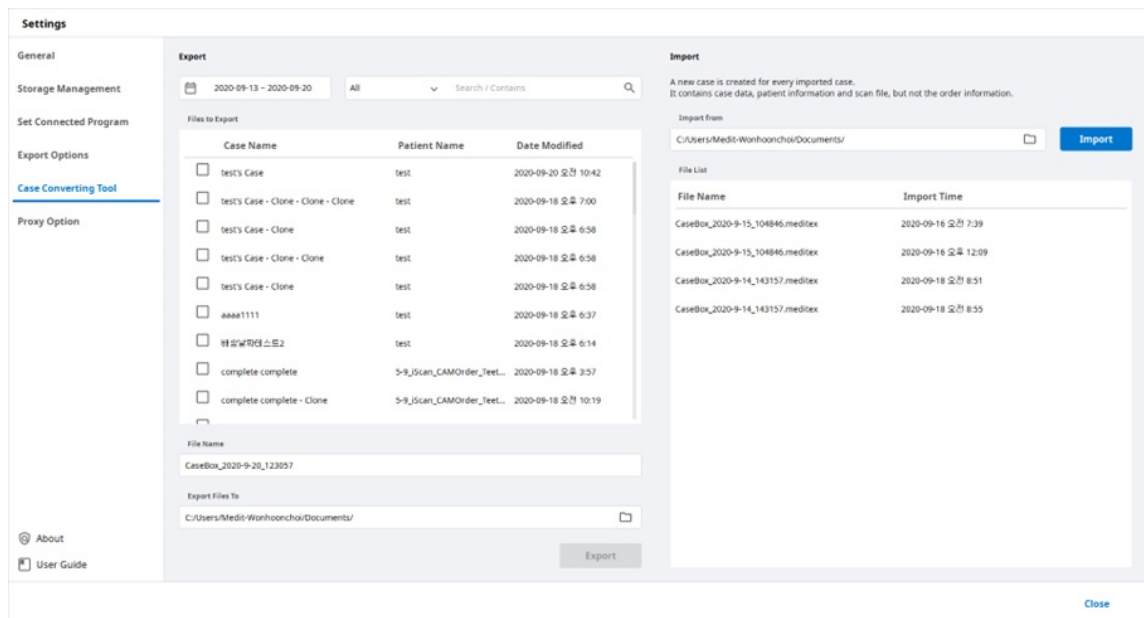

3. Στην ενότητα εισαγωγής, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας για το αρχείο .meditex που θέλετε να εισάγετε.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» και ελέγξτε το εισαγόμενο αρχείο στην παρακάτω λίστα αρχείων.

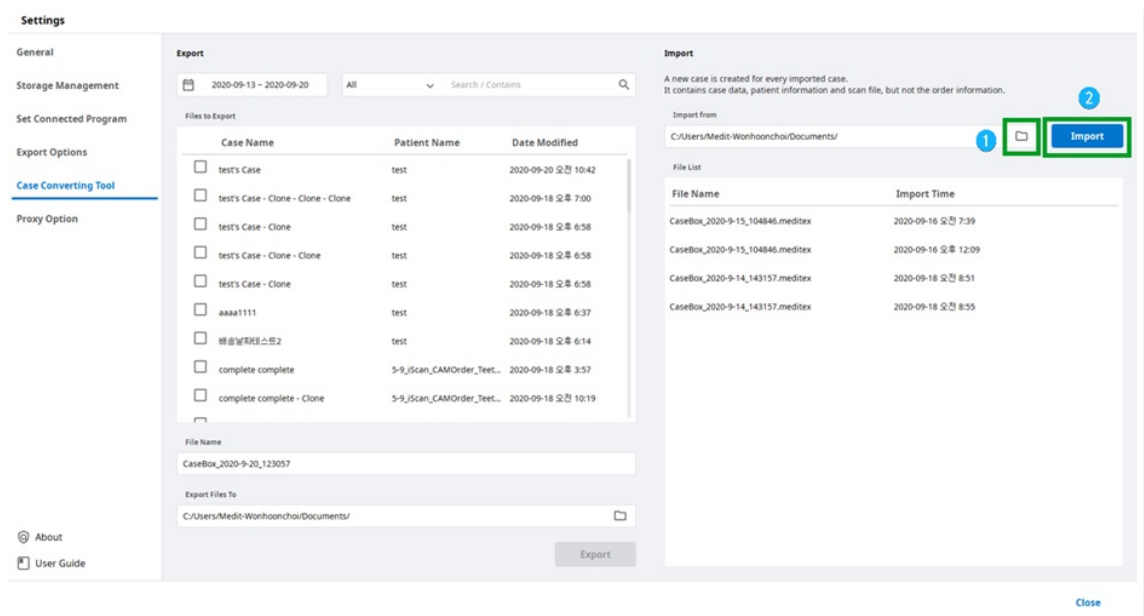

5. Το εισαγόμενο περιστατικό θα εμφανιστεί επίσης στο Case Box (λογαριασμός κλινικής) ή στο Work Box (λογαριασμός εργαστηρίου).

Επιλογές διακομιστή μεσολάβησης

Σε ορισμένα περιορισμένα περιβάλλοντα διαδικτύου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαδικτύου.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Please apply the changes. **Apply**

[Close](#)

Σχετικά

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το Medit Link.

About

MEDIT Link

v 2.4.0 Build 152
Dev Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright (c) Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Οδηγός χρήστη

Κάντε λήψη του οδηγού χρήστη για το Medit Link.

Το άνοιγμα του οδηγού χρήστη απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Το Πρόγραμμα προβολής αρχείων ομαδοποιεί και εμφανίζει διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν από προγράμματα που συνδέονται με το Medit Link και των δεδομένων που επισυνάπτονται από τους χρήστες.


Παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, ρύθμιση αδιαφάνειας και διαγραφή δεδομένων.

Υποστηρίζει προεπισκοπήσεις αρχείων στις ακόλουθες μορφές:

- 3D δεδομένα: STL, OBJ, PLY
- 2D εικόνες: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Αρχεία βίντεο: MKV, MP4, AVI, WMV

Δέντρο δεδομένων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα για το περιστατικό στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, να προσαρμόσετε τη διαφάνεια και να διαγράψετε δεδομένα από το δέντρο δεδομένων.




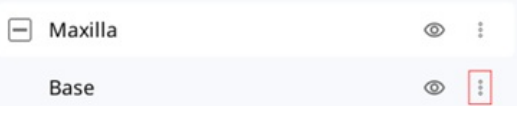
	Εμφάνιση/ Απόκρυψη	Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα δεδομένα.
	Αδιαφάνεια	Το ρυθμιστικό εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα δεδομένα στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των εμφανιζόμενων δεδομένων μετακινώντας το ρυθμιστικό. 
	Περισσότερα	Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα, εμφανίζονται πρόσθετες διαθέσιμες λειτουργίες.  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων αλλά εμφάνιση μόνο των αντίστοιχων δεδομένων. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των δεδομένων. • Αντιγραφή: Αντιγράψτε τα δεδομένα και προσθέστε τα στην ομάδα συνημμένων. • Εξαγωγή: Εξαγωγή των επιλεγμένων αρχείων. • Μετονομασία: Αλλαγή ονομασίας των δεδομένων. • Διαγραφή: Διαγραφή των δεδομένων.

Ήσημείωση

Μπορείτε να κάνετε μετονομασία δεδομένων όταν είστε συνδεδεμένοι.

Εργαλεία ελέγχου μοντέλου

3D έλεγχος μοντέλου

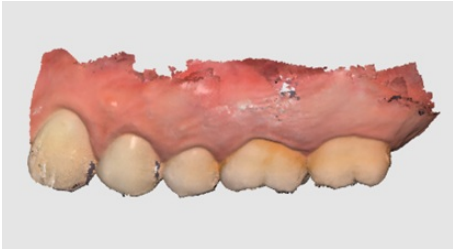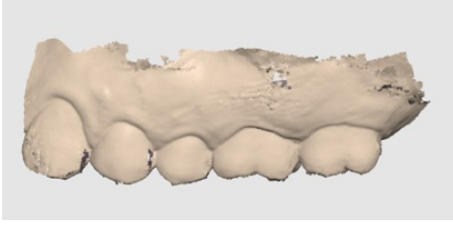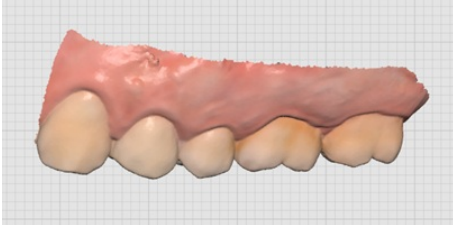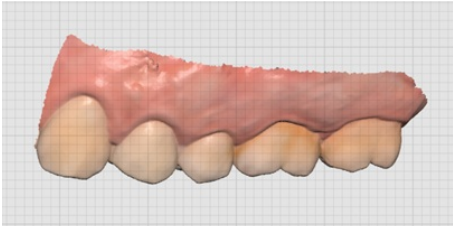	Μετακίνηση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγένθυση/ Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργίας εμφάνισης μοντέλου	Υφή ενεργοποιημένη 
		Υφή απενεργοποιημένη 
	Ρυθμίσεις πλέγματος (mm)	Πλέγμα ενεργοποιημένο 
		Επικάλυμμα ενεργοποιημένο 
		Πλέγμα απενεργοποιημένο Απόκρυψη του πλέγματος.

Έλεγχος 2D εικόνας

	Επόμενη/Προηγούμενη εικόνα	Μετακίνηση μεταξύ εικόνων.
	Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την εικόνα.


	Λήψη/Επικόλληση παραθύρου	Μπορείτε να αποσπάσετε το παράθυρο της εικόνας και να το προσαρμόσετε στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου. Όταν το παράθυρο αποκατασταθεί στην αρχική του θέση, επιστρέφει στο προεπιλεγμένο του μέγεθος.
---	--------------------------------------	---

Εργαλεία λειτουργίας

Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις


Κάντε λήψη της τρέχουσας οθόνης ως 2D εικόνα, κάντε σχεδιασμό ή προσθέστε σημειώσεις.

Μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως αρχείο με τις σημειώσεις σας και να το στείλετε ως αναφορά.

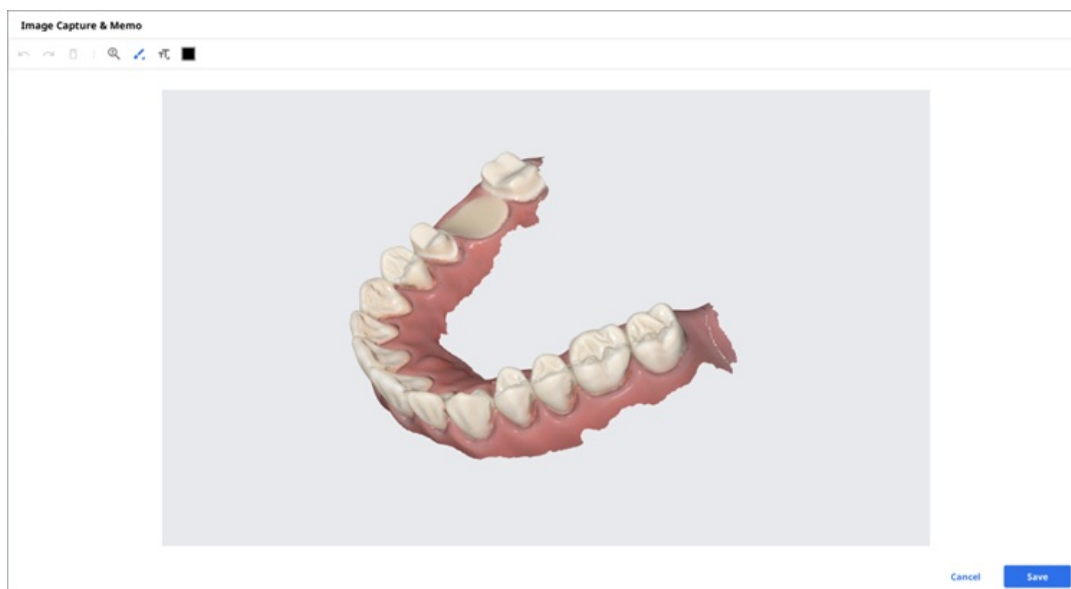

Ορθοδοντική προβολή

Κάντε λήψη των εικόνων στην τρέχουσα κατεύθυνση προβολής και πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά από την τρέχουσα κατεύθυνση προβολής.

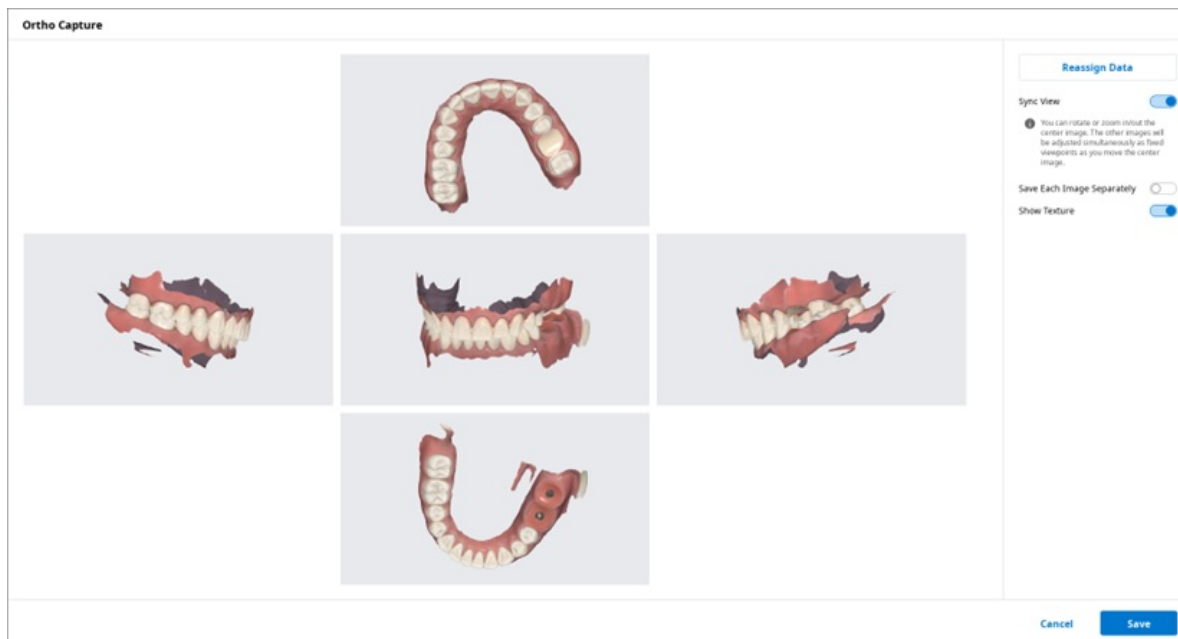

Προβολή συγχρονισμού

Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση της κεντρικής εικόνας. Οι άλλες εικόνες θα προσαρμοστούν ταυτόχρονα ως σταθερές οπτικές γωνίες καθώς μετακινείτε την κεντρική εικόνα.

Όταν είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να μετακινήσετε, να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυνση όλων των εικόνων ξεχωριστά.


Αποθήκευση κάθε
εικόνας ξεχωριστά
Εμφάνιση υψής

Αποθηκεύστε κάθε εικόνα σε υψηλή ανάλυση.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την υφή για το μοντέλο.


Εκ νέου εκχώρηση
δεδομένων

Αλλάξτε τα δεδομένα για την άνω γνάθο/γνάθο με τη λειτουργία Εκ νέου εκχώρησης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αλλαγμένα δεδομένα για δημιουργία και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες αποτελεσμάτων της Ορθοδοντική προβολής.

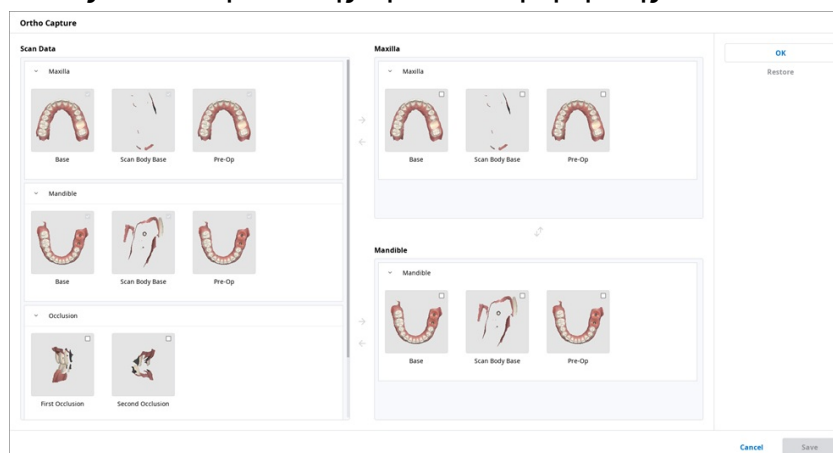


- Δεδομένα σάρωσης: Τα δεδομένα σάρωσης για το περιστατικό εμφανίζονται όλα.
- Άνω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την άνω γνάθο.
- Κάτω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την κάτω γνάθο.

Γεμίστε τα κενά στα 3D δεδομένα πλέγματος.

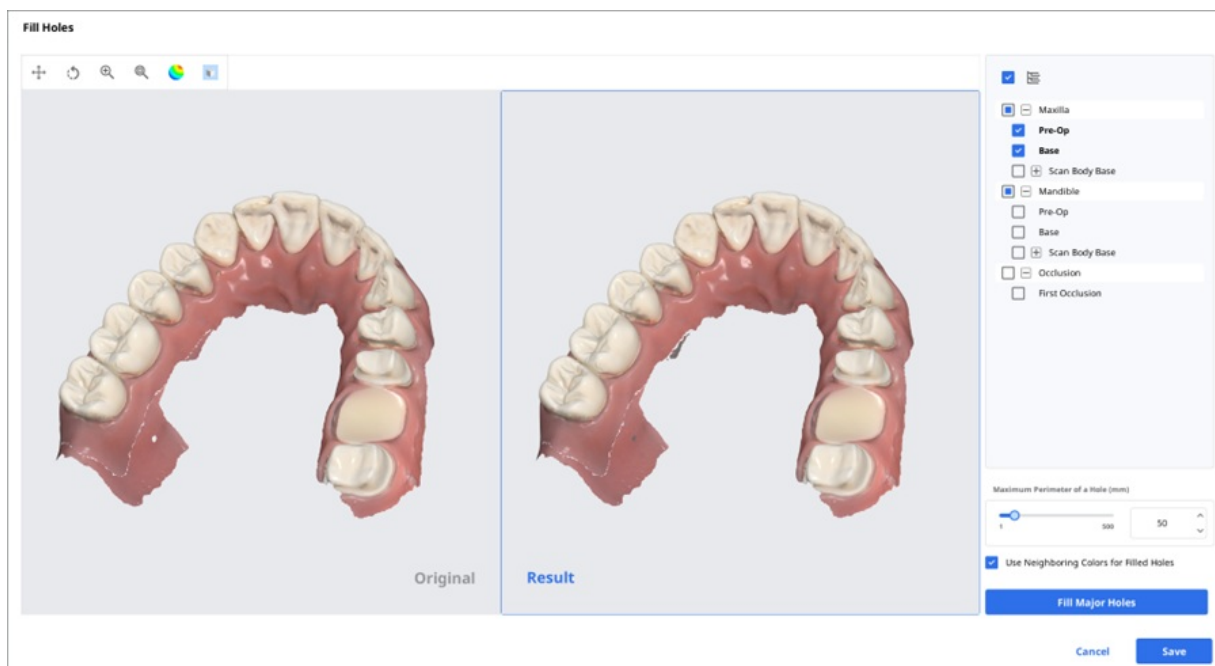

Περικοπή


Η Περικοπή παρέχει διάφορα εργαλεία για την επεξεργασία δεδομένων.

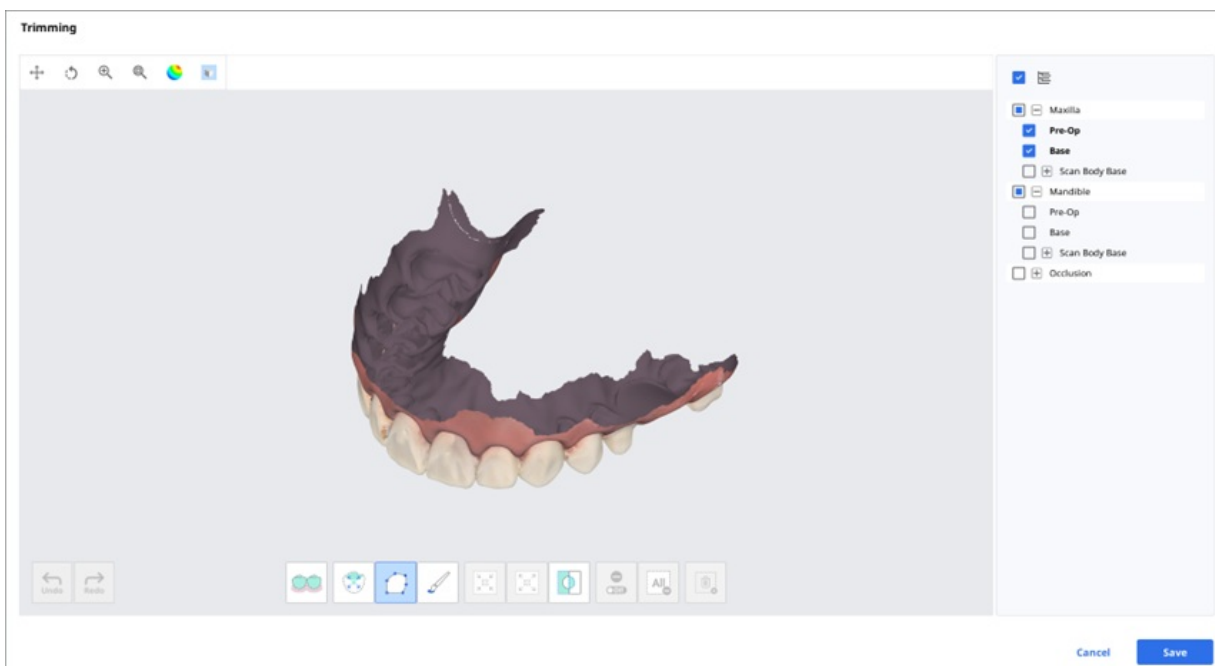

Τα επιλεγμένα 3D δεδομένα πλέγματος μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Επιλογή		Έξυπνη επιλογή δοντιών	Επιλέγει αυτόματα όλα τα δόντια της γνάθου αφαιρώντας τα μέρη των ούλων. iΣημείωση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τα δεδομένα σάρωσης που έχουν αποκτηθεί από το Medit Scan for Clinics με ενεργοποιημένη την επιλογή «Χρήσης GPU».
		Έξυπνη επιλογή ενός δοντιού	Επιλέξτε αυτόματα την περιοχή ενός μόνο δοντιού αφήνοντας έξω μέρη των ούλων. Κάντε κλικ, πατήστε και σύρετε το ποντίκι στο δόντι.
		Επιλογή πολυγραμμής	Επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη.
		Επιλογή βούρτσας	Επιλέξτε όλες τις οντότητες σε μια ελεύθερα σχεδιασμένη διαδρομή στην οθόνη. Θα επιλεγεί μόνο η μπροστινή όψη. Η βούρτσα διατίθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη.
Προσαρμογή επιλεγμένης περιοχής		Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής	Μειώνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Επέκταση επιλεγμένης περιοχής	Επεκτείνει την επιλεγμένη περιοχή κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
		Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής	Αντιστρέψτε την επιλογή.
Αποεπιλογή		Επιλογή/Αποεπιλογή	Όταν είναι ενεργοποιημένο, αποεπιλέξτε την περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
		Εκκαθάριση όλων των επιλογών	Διαγράφει όλες τις επιλεγμένες περιοχές.
		Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής	Διαγράψτε τα δεδομένα από την επιλεγμένη περιοχή.

1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε με τα εργαλεία επιλογής της περιοχής.

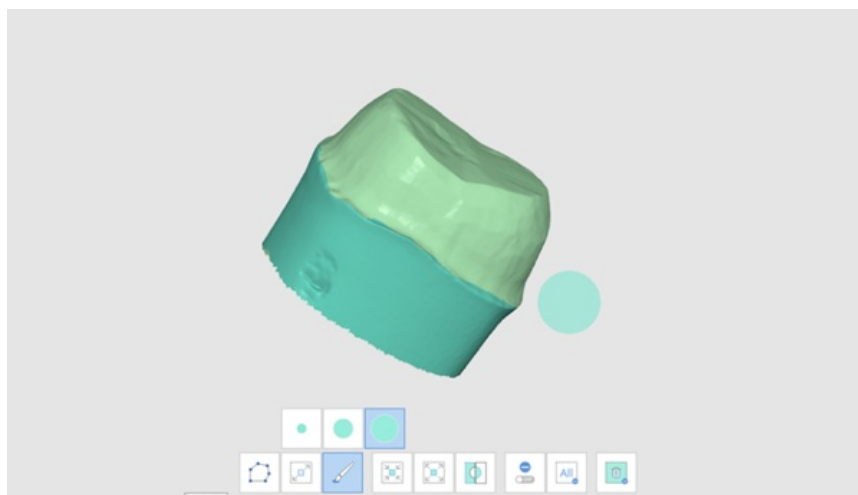


Ίσημείωση


Το εργαλείο περικοπής Πολυγραμμή επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη, ενώ το εργαλείο περικοπής Βούρτσα επιλέγει μόνο τα δεδομένα της μπροστινής όψης.

- Μπορείτε να αντιστρέψετε, να συρρικνώσετε ή να επεκτείνετε την επιλογή με τα ακόλουθα τρία εργαλεία.


- Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής

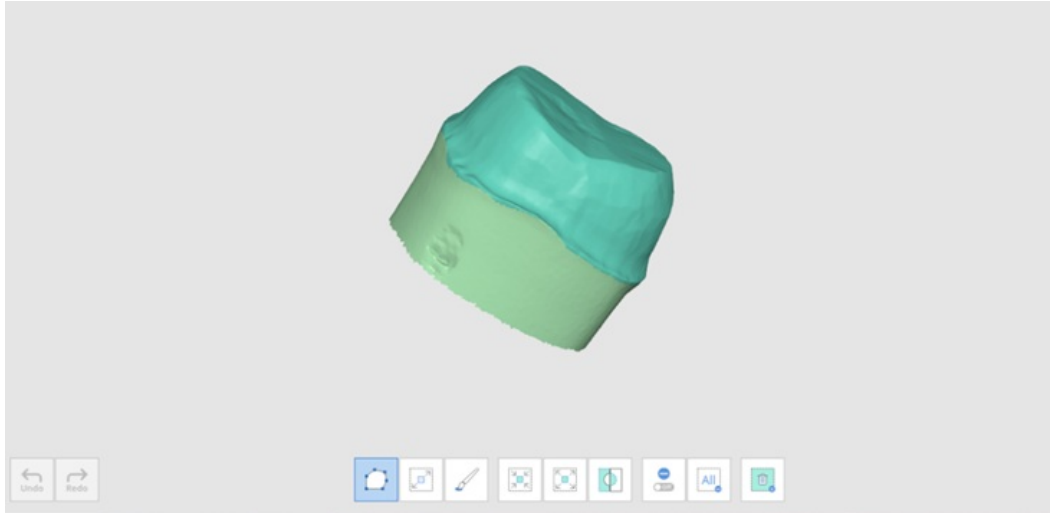

- Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής

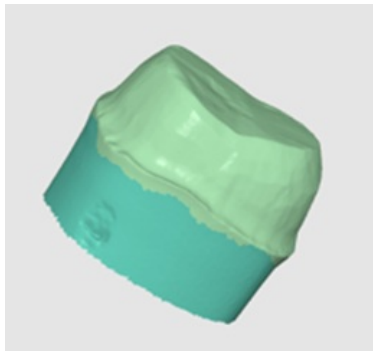

- Επέκταση επιλεγμένης περιοχής

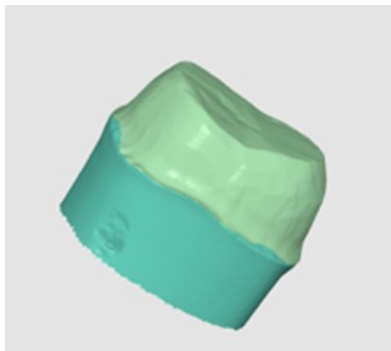

- Μπορείτε να αποεπιλέξετε τις επιλεγμένες περιοχές με το εργαλείο Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής.



Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης

Βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης της σύγκλεισης. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα στόχου και να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση της σύγκλεισης.




Επίπεδο αντιστάθμισης

Χαμηλό	Compensation Level	
Μεσαίο	Compensation Level	

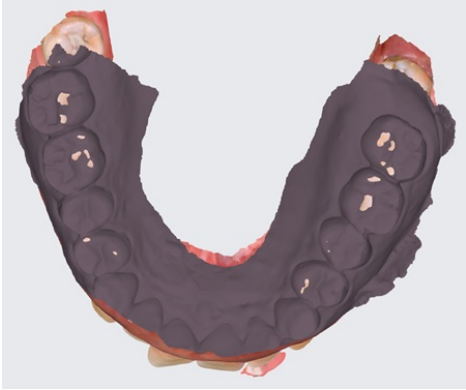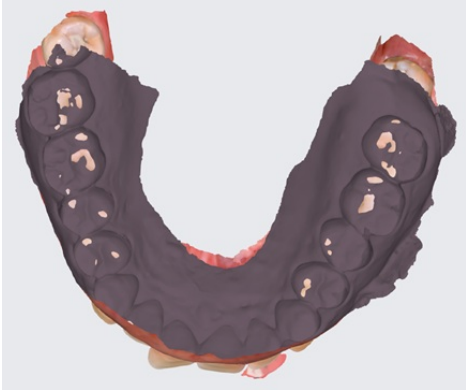Υψηλό	Compensation Level ☒ 	
Απενεργοποίηση	Compensation Level ☐ 	

Κίνηση της κάτω γνάθου

Μπορείτε να αναπαράγετε τις κινήσεις της κάτω γνάθου που έχουν καταγραφεί στο Medit Scan for Clinics για να δείτε τις δυναμικές συγκλεισιακές επαφές μεταξύ της άνω και της κάτω οδοντοστοιχίας.

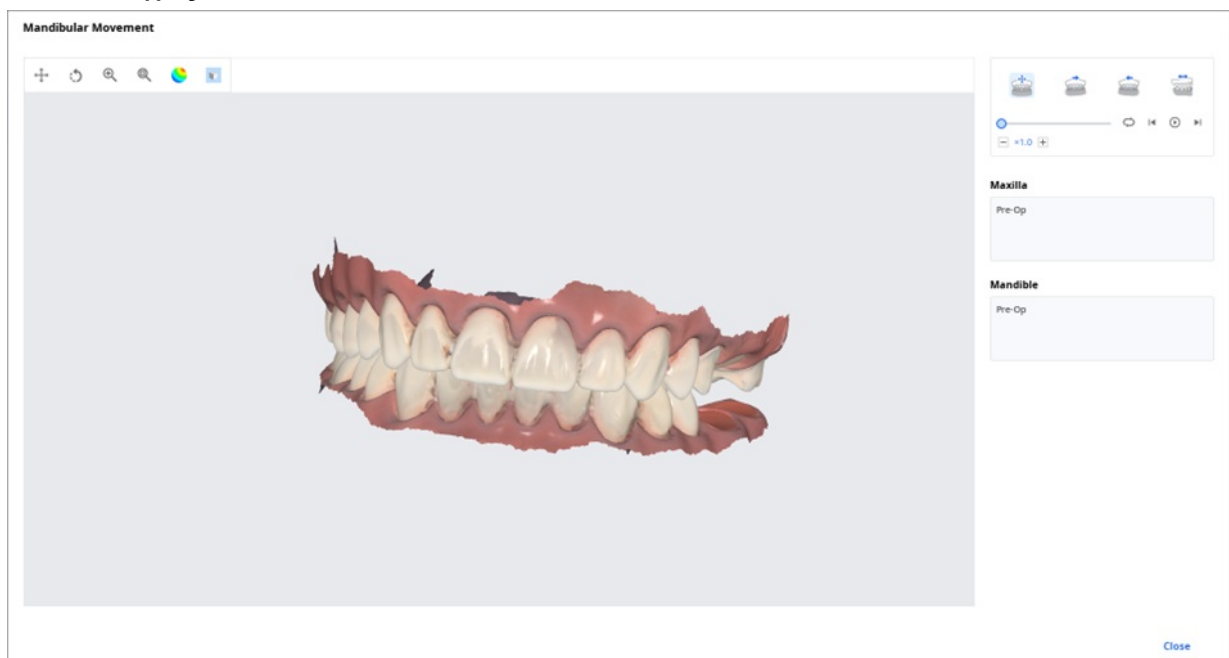

	Ελεύθερη κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της ελεύθερης κίνησης της κάτω γνάθου.
	Αριστερή πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα αριστερά.
	Δεξιά πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα δεξιά.

	Εμπρόσθια κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα εμπρός.
---	------------------	--

Διαχείριση των Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να λάβετε πολλαπλά αποτελέσματα δεδομένων σύγκλεισης από την εφαρμογή Σάρωσης της Medit.

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω του «Προγράμματος προβολής αρχείων».

Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα


Όταν ο χρήστης λαμβάνει πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από το Medit Scan for Clinics, το Medit Link παρέχει την επιλογή επιλογής αποτελέσματος.

Η λίστα των αποτελεσμάτων παρατίθεται ονομαστικά και μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Το επιλεγμένο μοντέλο θα εμφανίζεται στο «Δέντρο δεδομένων» και στην «Περιοχή εμφάνισης μοντέλου».



Μπορείτε να συρρικνώσετε τη λίστα και να αλλάξετε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τα εικονίδια με τα βέλη.

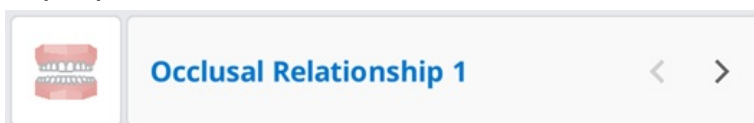

Επιλογές προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τις Επιλογές προβολής για να προσαρμόσετε τις διατάξεις της λίστας περιστατικών στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Φίλτρα κατάστασης

Εμφάνιση ή απόκρυψη κάθε φίλτρου που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του περιστατικού. Τα κρυφά φίλτρα κατάστασης δεν εμφανίζονται στην οθόνη στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε το περιστατικό που χρειάζεστε με τα φίλτρα που εμφανίζονται.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered



Case Completed



Cancel

Apply

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27

- Μπορείτε να κάνετε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να προβάλετε για να εμφανίσετε περιστατικά μόνο σε αυτήν την κατάσταση.
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Διαθέσιμες επιλογές φιλτραρίσματος για κάθε box:

Case Box	Όλα/Μόνο φόρμα/Χρειάζεται επεξεργασία/Ολοκληρωμένη σάρωση/CAD/Παραγγελία/Ολοκληρωμένο περιστατικό
Order Box	Όλα/Σε εκκρεμότητα/Ακυρωμένο/Απορριπτέο/Αποδεκτό/Απεσταλμένο/Ολοκληρωμένο περιστατικό
In Box	Όλα/Σε εκκρεμότητα/Ακυρωμένο/Απορριπτέο/Αποδεκτό/Ετοιμο/Απεσταλμένο/Ολοκληρωμένο περιστατικό
Work Box	Όλα/Μόνο φόρμα/Χρειάζεται επεξεργασία/Ολοκληρωμένη σάρωση/CAD/Ολοκληρωμένο
Trash Box	Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία πίνακα

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στη λίστα περιστατικών στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων πίνακα ή να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης του πίνακα στην προβολή λίστας για βέλτιστη βελτιστοποίηση για το περιβάλλον χρήστη.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Τύπος προβολής

Αλλάξτε τον τύπο προβολής μεταξύ της Προβολής συλλογής και της προβολής λίστας στο Case Box.

MEDIT Link 3.0.2
Wonhoon Choi_clinic

[+ New Case](#)

Case Box

Total Count: 644

test's Case	temporaries - Clone - Clone	Preop 사용한 케이스	test's Case
test No Registered Form 2022-10-27 오전 8:59 Scan Completed	test Crown 25, 27 Pontic 26 2022-10-26 오후 10:24 Scan Completed	straumann Inlay 15 Pontic 26 2022-10-26 오후 7:44 Ordered	test Inlay 28 Crown 16 Custom Abutment + 21, 22, 23, 24, 25, 26 2022-10-26 오후 7:43 Scan Completed
주문테스트 1 - Clone test Inlay 16, 15, 14, 23, 24, 2... 2022-10-26 오후 12:15 Ordered	TreeTest20221026 test Crown 25, 27 Pontic 26 2022-10-26 오전 8:51 Scan Completed	temporaries - Clone - Clone test Crown 25, 27 Pontic 26 2022-10-25 오전 9:04 Ordered	R2.4.0_TAK_Medit Scan for Clinics_Basic_with ... 2.4.0 Data_TAK Inlay 46 Crown 25, 27 Implant Crown 16, 36 + 2More 2022-10-24 오후 3:18 Scan Completed
temporaries	temporaries - Clone - Clone - Clone	주문테스트 1 - Clone - Clone	test's Case

94

Προβολή λίστας

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Settings

Help

Logout

Info

MEDIT Link3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

+

New Case

Case Box

AllForm OnlyNeed ProcessingScan CompletedCADOrderedCase Completed

View Options

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Wonhoonchoi-Lab
Scan Completed	케이스해모있고주문해모수경한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파일리스틀레스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε μια επιλογή ομαδοποίησης για να ταξινομήσετε και να αναδιατάξετε τα περιστατικά στη λίστα με βάση την επιλεγμένη επιλογή.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone ▾

☒None

☐Patient Name

☐Order Date

☐Scanning Date

SortingLast Modified Date >

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ομαδοποίησης:

Box	Ομαδοποίηση
Case Box	Κανένα
	Όνομα ασθενή
	Ημερομηνία σάρωσης
	Ημ/νία παραγγελίας
Order Box	Κανένα
	Ημερομηνία σάρωσης
	Ημ/νία παραγγελίας

	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης
In Box	Κανένα
	Ημ/νία παραγγελίας
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης
Work Box	Κανένα
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης

Ήσημείωση

Οι επιλογές ομαδοποίησης και ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμες για Trash Box και Case Talk.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης για να αλλάξετε τη σειρά των περιστατικών στη λίστα σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

☰ Sorting

Last Modified Date ▾

☐ Patient Name

☒ Last Modified Date

☐ Scanning Date

☐ Order Date

☐ Lab Name

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ταξινόμησης:

Box	Ομαδοποίηση	Ταξινόμηση
Case Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
	Όνομα ασθενή	Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία παραγγελίας	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα εργαστηρίου
	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα εργαστηρίου

Order Box	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα εργαστηρίου
	Ημ/νία Παραγγελίας	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία σάρωσης / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα εργαστηρίου
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου
In Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ημ/νία Παραγγελίας	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία σάρωσης / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα κλινικής
Work Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης / Όνομα κλινικής

ΠΣημείωση

Οι επιλογές ομαδοποίησης και ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμες για Trash Box και Case Talk.

Φιλτράρισμα και αναζήτηση


Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία

Φιλτράρισμα και εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά εντός της καθορισμένης διάρκειας.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.



2. Επιλέξτε τη διάρκεια από τη λίστα.

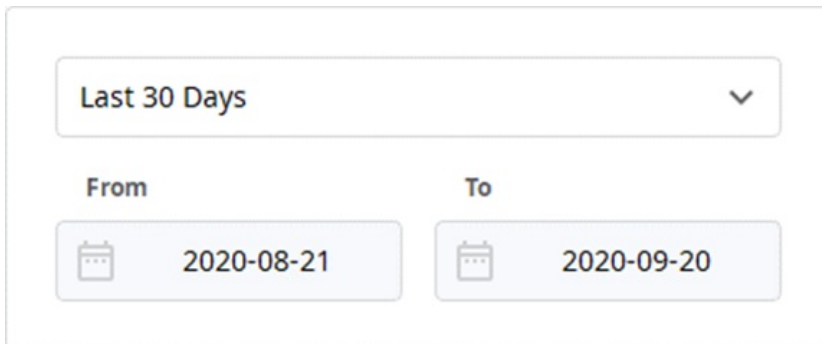


- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία χθες.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Αυτόν τον μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.
- Τον προηγούμενο μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε.

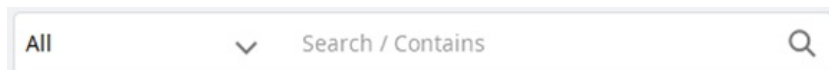

Τα ακόλουθα Κριτήρια αναζήτησης είναι διαθέσιμα για κάθε box:

Case Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς, Πληροφορίες φόρμας, Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, ID Παραγγελίας
In Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας

Work Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Πληροφορίες Φόρμας, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Case Talk	Όνομα Case Talk (Περιλαμβάνει), Όνομα ασθενούς (Ισούται)
Trash Box (Κλινική)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, Διαγράφηκε από
Trash Box (Εργαστήριο)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, Διαγράφηκε από

Μπορείτε να επιλέξετε τα κριτήρια αναζήτησης και να επιλέξετε μεταξύ της λογικής του Περιλαμβάνει και του Ισούται.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού

Δημιουργία περιστατικών

Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Εισάγετε βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα του ασθενούς και το όνομα του περιστατικού.
 - Εάν εισάγετε ένα όνομα που δεν βρίσκεται στη λίστα ασθενών, θα προστεθεί ένας νέος ασθενής.
 - Εάν εισάγετε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα ασθενών, μπορείτε να το επιλέξετε από τη λίστα.
 - Εάν καταχωρείτε ένα περιστατικό για έναν υπάρχοντα ασθενή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λίστα ασθενών για να επιλέξετε έναν υπάρχοντα ασθενή.



- Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα ασθενών, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν νέο ασθενή ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ενός υπάρχοντος ασθενούς.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhsan Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το

αλλάξετε.

4. Κάντε κλικ στο «Καταχώρηση & Σάρωση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του περιστατικού και προχωρήστε στη σάρωση.
 - **Καταχώρηση** : Θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια σελίδα. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την καταχώριση πολλαπλών περιστατικών.
 - **Καταχώριση & Σάρωση**: Μεταβείτε στην καρτέλα Φόρμα για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες φόρμας για το περιστατικό.

Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Εισάγετε ή επιλέξτε το όνομα της κλινικής.
3. Εισάγετε το όνομα του περιστατικού και το όνομα του ασθενούς. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
4. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.
5. Μετά την καταχώριση του περιστατικού, θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική σελίδα.

Επεξεργασία περιστατικών

Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» για να αλλάξετε το όνομα του ασθενούς. Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία. Αντίθετα, μπορείτε να βρείτε ένα όνομα ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς από τη λίστα.

Patient List

Select a patient in the list to set the patients of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhooon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Ελέγξτε το όνομα του ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον.
4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε το κουμπί «Νέος ασθενής» .
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις καταχωρημένες πληροφορίες για τον ασθενή.
6. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Ήσημείωση

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των περιστατικών που ελήφθησαν μέσω της παραγγελίας στο In Box.

Κλωνοποίηση περιστατικών

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Θα σας γίνει ερώτηση για το τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να κλωνοποιήσετε στο νέο περιστατικό.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Επιλέξτε εάν θα γίνει αντιγραφή μόνο για πληροφορίες φόρμας ή όλα τα δεδομένα.
4. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Αντιγράψτε όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσετε ένα νέο περιστατικό.
3. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».


Διαγραφή περιστατικού

Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή».



2. Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να διαγράψετε το περιστατικό.

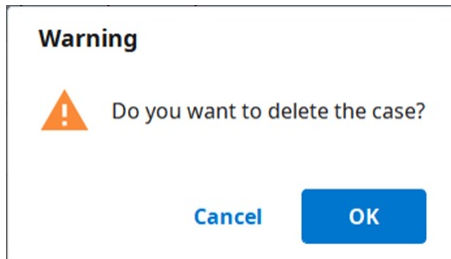

3. Τα διαγραφμένα περιστατικά μετακινούνται στο Trash Box και μπορούν να ανακτηθούν εάν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες φόρμας

Μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας με βάση το συνδεδεμένο πρόγραμμα και τον τύπο θεραπείας.

Οι πληροφορίες που εισάγετε θα χρησιμοποιηθούν ως βασικές πληροφορίες για την εργασία σε προγράμματα σάρωσης ή CAD και την παραγγελία.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε εάν πρόκειται να εισάγετε πληροφορίες θεραπείας κατά δόντια ή κατά γνάθο.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
3. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Εισαγωγή στην καρτέλα CAD

1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης: Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
2. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού/τη γνάθο/τον αριθμό καλουπιού.
3. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για λεπτομερείς επιλογές και λειτουργίες CAD.
4. Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
 - Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
5. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα σάρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης: Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
3. Οι μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Δόντια	☐	☐
Γνάθος	☐	☐
Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση	☒	☐
Πολλαπλή χύτευση	☒	☐


4. Επιλέξτε τους αριθμούς δοντιών, γνάθου ή καλουπιού για τη διαδικασία σάρωσης.
5. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.
6. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Εισαγωγή στην καρτέλα CAD

1. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης:
Δόντια/ Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
2. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού/τη γνάθο/τον αριθμό καλουπιού.
3. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για λεπτομερείς επιλογές και λειτουργίες CAD.
4. Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
 - ο Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.
5. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση».

Σύνδεση δοντιών με γέφυρα

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά δόντια σε μια γέφυρα όταν γίνεται εφαρμογή του ίδιου υλικού σε πολλαπλά γειτονικά δόντια. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γέφυρας δίπλα στα επιλεγμένα δόντια για να τα συνδέσετε ή να τα αποσυνδέσετε.

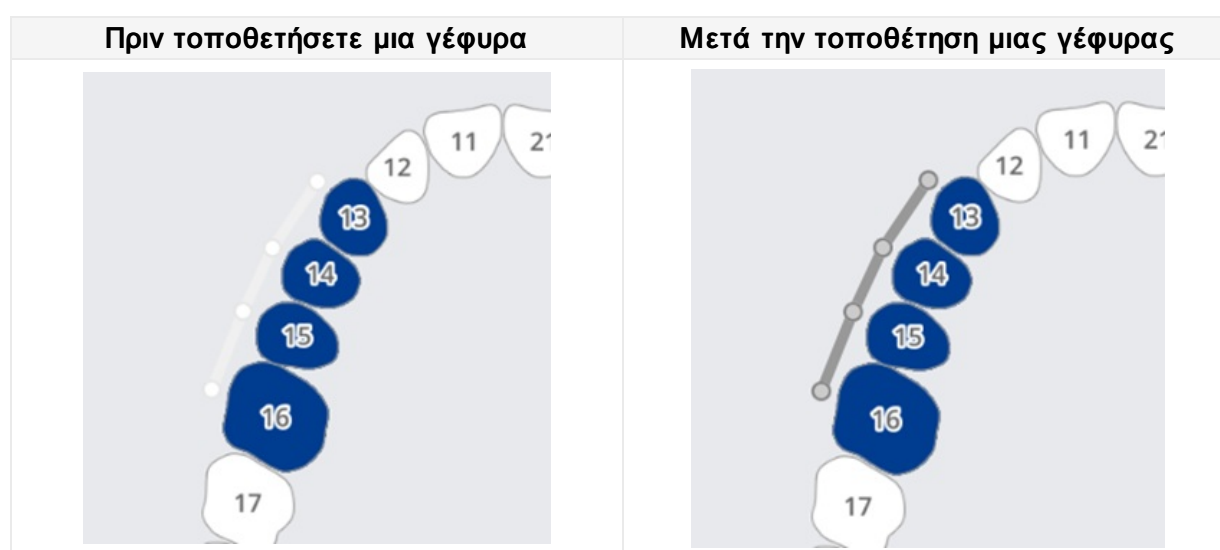

Ρύθμιση επιλογών σάρωσης

Ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο εργάζεστε, παρέχονται διάφορες επιλογές σάρωσης.

Οι επιλεγμένες επιλογές σάρωσης μεταβιβάζονται σε κάθε πρόγραμμα σάρωσης.

Medit Scan for Labs

Γενικές επιλογές

	Γειτονικό δόντι	Σημειώστε τα τροχισμένα και γειτονικά δόντια και μεταδώστε αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Ανταγωνιστής	Επισημαίνει αυτόματα τον ανταγωνιστή και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Αρθρωτήρας	Εμφάνιση επιλογών για την επιλογή του αρθρωτήρα στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Δείκτης κίνησης	Επιτρέψτε τη χρήση της στρατηγικής σάρωσης «Κίνηση γνάθου» στο πρόγραμμα σάρωσης.

Επιλογές κατά δόντια

	Αναλογικό	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση αναλογικών στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση προεπέμβασης	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση ενός προεπεμβατικού μοντέλου στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση διαγνωστικού κερώματος	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση κερωμάτων στο πρόγραμμα σάρωσης.

Προσθήκη στα αγαπημένα

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα ένα προϊόν καταχωρώντας το ως αγαπημένο.

Η διαχείριση της λίστας των καταχωρημένων αγαπημένων εφαρμόζεται ως πρότυπο και μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω των λειτουργιών εξαγωγής και εισαγωγής.

Προσθήκη στα αγαπημένα

1. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - ο Τα Τύπος – Μέθοδος – Υλικό – Αποχρώσεις μπορούν να καταχωρηθούν ως αγαπημένα ακόμα και αν δεν έχουν επιλεγεί όλα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αστεριού».

4. Ένας συνδυασμός των επιλεγμένων παραμέτρων, εξαιρουμένου του αριθμού δοντιού, βρίσκεται στη λίστα αναζήτησης των αγαπημένων σας.

Διαχείριση αγαπημένων προτύπων

Μπορείτε να καταχωρήσετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε διαφορετικούς τύπους προτύπων.

Προσθήκη	Προσθέστε ένα νέο πρότυπο.
Μετονομασία	Μετονομάστε το τρέχον πρότυπο.
Διαγραφή	Διαγράψτε το τρέχον πρότυπο.
Εξαγωγή	Εξαγωγή του τρέχοντος προτύπου σε αρχείο.
Εισαγωγή	Εισάγετε ένα αρχείο προτύπου.

Εργασία σε Σάρωση/CAD

Διαδικασία σάρωσης

Με βάση τα στοιχεία που εισάγετε, προχωράτε στη σάρωση.

1. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες θεραπείας και επιλέξτε τις απαραίτητες επιλογές σάρωσης.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Διαδικασία CAD

Το Medit Link είναι ενσωματωμένο με το exocad.

CAD	Καταχώρηση πληροφοριών θεραπείας	Επιβεβαίωση των πληροφοριών θεραπείας	Άμεση εκτέλεση CAD	Εισαγωγή αποτελεσμάτων CAD πίσω στο Medit Link
exocad	Ο	Ο	Ο	Ο

1. Στις Ρυθμίσεις > Ορισμός συνδεδεμένου προγράμματος, μπορείτε να συνδέσετε το πρόγραμμα CAD της επιλογής σας από τη λίστα.
2. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες εργασίας και επιλογές σχεδίασης στην καρτέλα CAD.
3. Κάντε κλικ στο «CAD» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
4. Το συνδεδεμένο πρόγραμμα CAD εκτελείται και τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα.
5. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση του CAD.

Ήδη μείωση

Το Medit Link για Mac δεν υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης με CAD.

Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης

Εκτός από την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων με συνεργάτες μέσω παραγγελιών, το Medit Link σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αποτελέσματά σας στην επιθυμητή μορφή αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής.


Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίζει τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
Όνομα φακέλου	Το σύστημα δημιουργεί έναν νέο φάκελο και αποθηκεύει όλα τα αποτελέσματα σε αυτόν. Το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου ορίζεται από τον κανόνα ονομασίας. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του φακέλου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας μέσω των Ρυθμίσεων > Επιλογές εξαγωγής > Κανόνες για ονομασία φακέλου
Όνομα αρχείου	Ορίζει το όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Ο κανόνας ονομασίας ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του αρχείου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας μέσω των Ρυθμίσεων > Επιλογές εξαγωγής > Κανόνες για ονομασία αρχείου
Τύπος CAD	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα σχεδιασμού. Το Medit Link θα προσαρμόσει τα αρχεία με βάση αυτήν την επιλογή, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε στον σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Μορφή πλέγματος	Καθορίζει τη μορφή του αρχείου πλέγματος.

Μορφή εικόνας	Καθορίζει τη μορφή των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση αρχείων	Συμπιέζει όλα τα αποτελέσματα σε ένα μόνο αρχείο.
Συνδυασμός μεμονωμένου πλέγματος	Συνδυάζει το αποτέλεσμα της άνω ή της κάτω γνάθου με το μεμονωμένο δόντι. Χρήσιμο όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή πολλών αρχείων σε ένα πρόγραμμα.
Εξαγωγή όλων συγκλεισιακή σχέση	Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να εξαγάγετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα.
Αποθήκευση πληροφοριών περιστατικού ως αρχείο PDF	Αποθηκεύστε τις πληροφορίες του περιστατικού ως pdf με το αποτέλεσμα.


Εξαγωγή επιλεγμένων αρχείων

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία εξαγωγής από το επεκτεταμένο μενού του προγράμματος προβολής αρχείων. Χρησιμοποιείτε το και θα μπορείτε να εξαγάγετε τα επιλεγμένα αρχεία εύκολα.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Μενού» δίπλα στην ομάδα δεδομένων ή σε μια οντότητα στο δέντρο δεδομένων του προγράμματος προβολής αρχείων.
2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

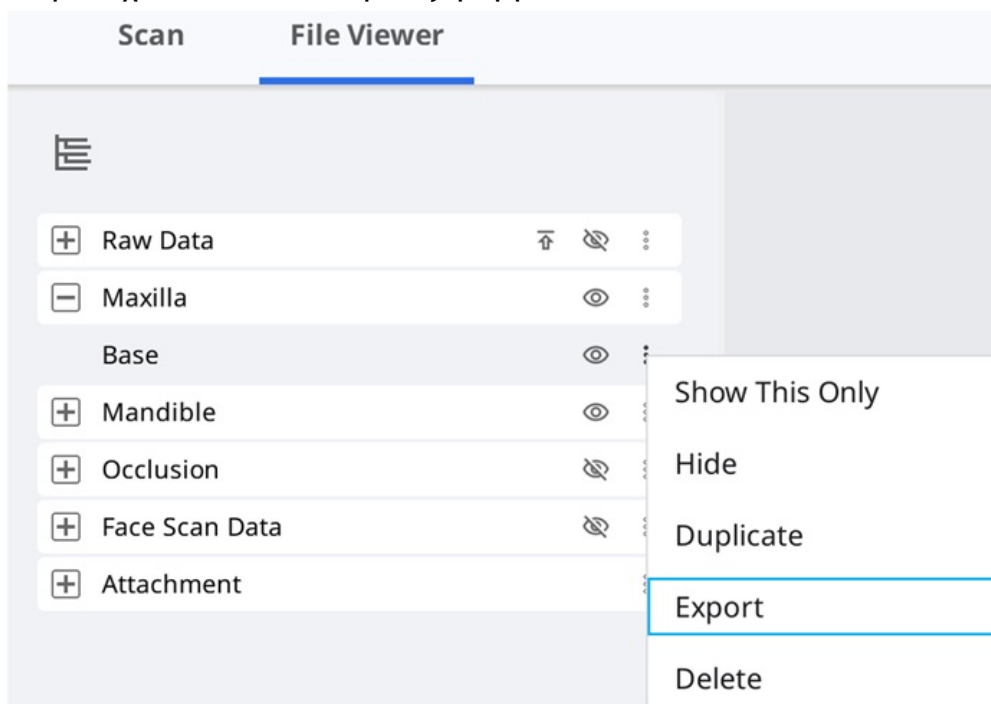

3. Το παράθυρο διαλόγου εξαγωγής εμφανίζει μόνο τα επιλεγμένα αρχεία που θέλετε να εξαγάγετε.

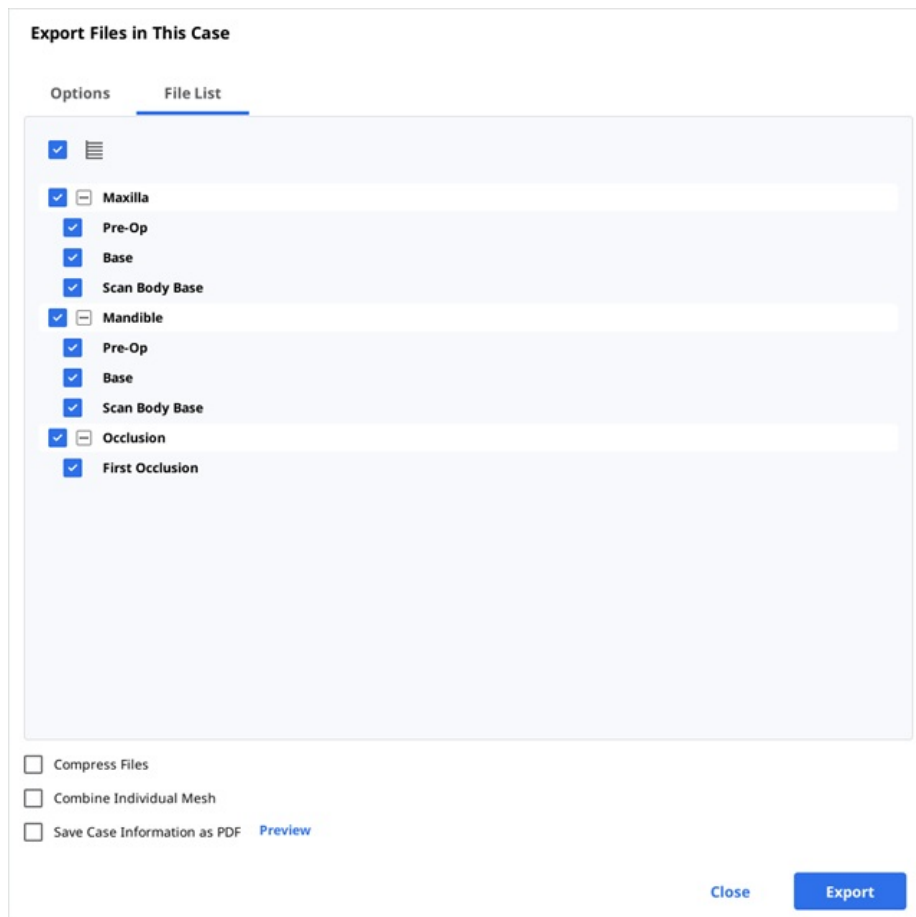

4. Τέλος, κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου


Το Medit Scan for Clinics παρέχει μία λειτουργία δημιουργίας της γραμμής περιθωρίου, και το Medit Link μπορεί να μεταφέρει τη γραμμή περιθωρίου σε πρόγραμμα CAD.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα

Γενικά, το Medit Link μετατρέπει τη γραμμή του περιθωρίου σε χρώμα και εξάγει το αποτέλεσμα με την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο μαζί. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη γραμμή περιθωρίου στο cad τους αναφέροντας τις πληροφορίες χρώματος.

Παράδειγμα:

Άνω γνάθος

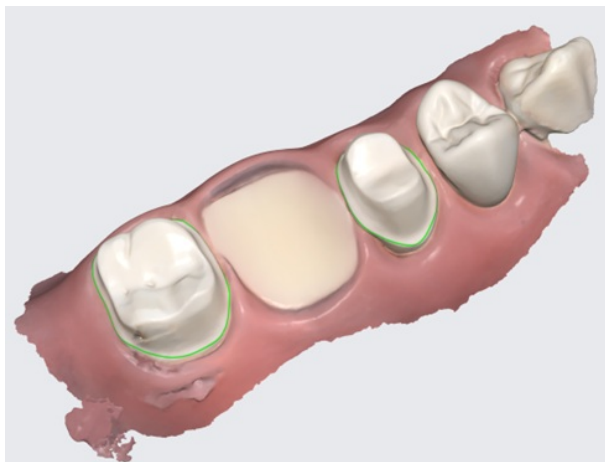

Αποτέλεσμα με τη γραμμή περιθωρίου ως χρώμα

Προειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για μορφές που περιλαμβάνουν πληροφορίες χρώματος όπως meditMesh, OBJ και PLY. Η γραμμή περιθωρίου δεν μετατρέπεται σε STL.

Προειδοποίηση

Τύπος CAD > 3shape δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.


Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο

Στην περίπτωση του Exocad, το Medit Link εξαγει τη γραμμή περιθωρίου στο «~margin.xyz» που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο exocad.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο στο exocad χωρίς πρόσθετη εργασία.

Παράδειγμα:

Άνω γνάθος	Γραμμή περιθωρίου
------------	-------------------

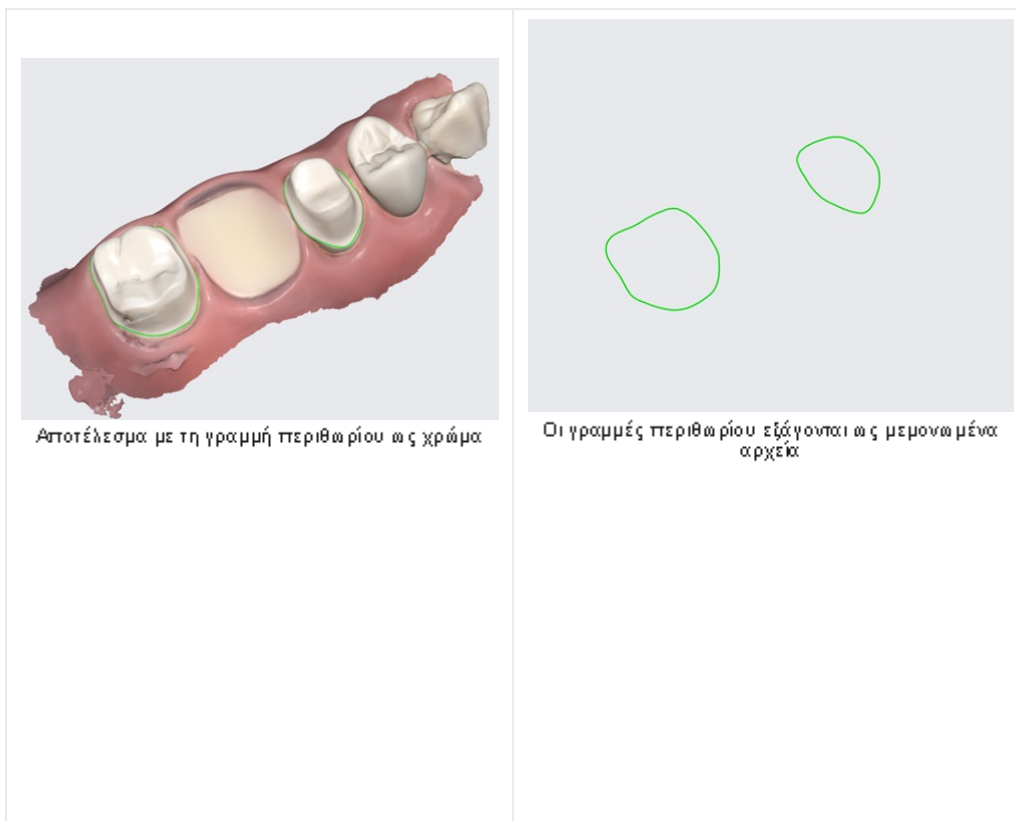

Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία εξαγωγής της λίστας περιστατικών σε μορφή CSV.


Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών με βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε εύκολα τα περιστατικά.

Η λειτουργία «Εξαγωγή σε CSV» είναι διαθέσιμη στο παρακάτω μενού της εφαρμογής του Medit Link.

- In Box
- Work Box

Πώς να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών

1. Μεταβείτε στο In Box ή στο Work Box.
2. Επιλέξτε τα περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε.

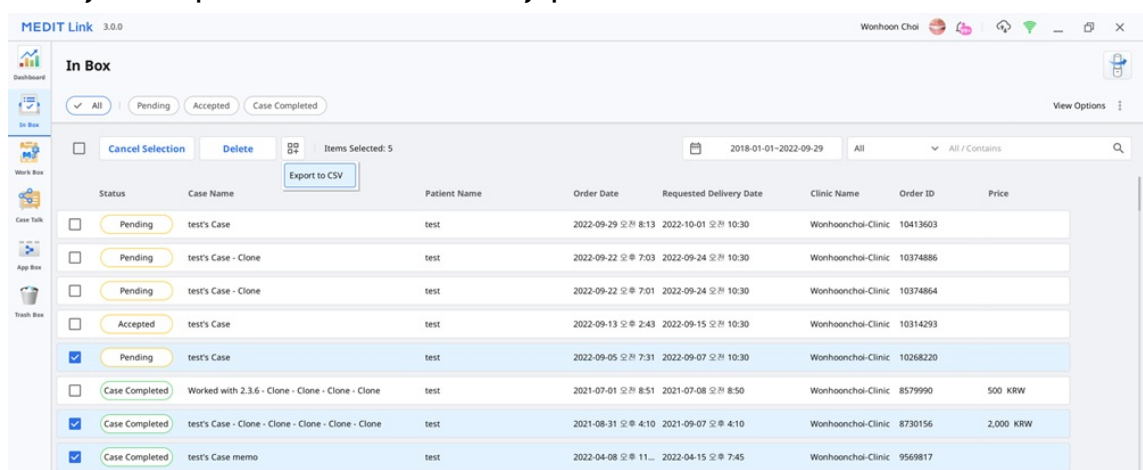

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεκταμένο μενού» στο επάνω μέρος για να επιλέξετε την

επιλογή «Εξαγωγή σε CSV».



4. Καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα αποτελέσματα.

Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link

Το Medit Link παρέχει μια λειτουργία λήψης.

Εάν θέλετε να λάβετε τα αρχεία αποτελεσμάτων χωρίς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Medit Link, μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων από την υπηρεσία ιστοσελίδας της Medit Link.

Πσημείωση


Τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο Medit Cloud για λήψη των αρχείων από την ιστοσελίδα.

Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο μενού της υπηρεσίας ιστοσελίδας της Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί «Λήψη» επάνω δεξιά.

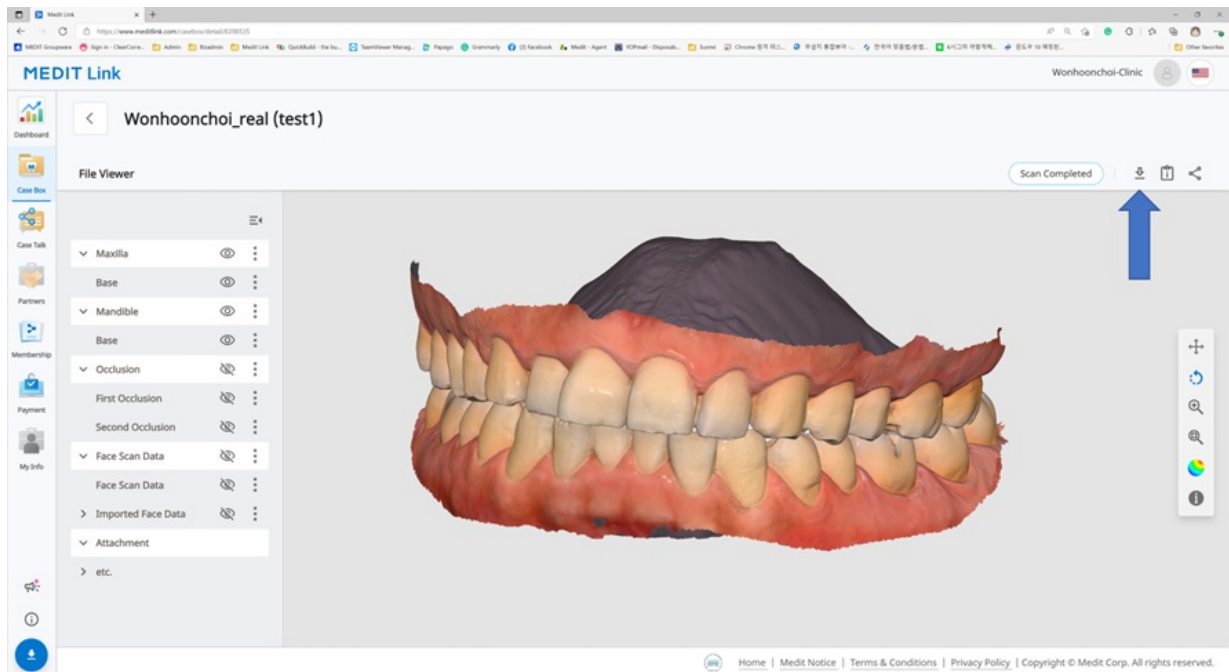

Web Viewer

Όταν κοινοποιείτε το περιστατικό χρησιμοποιώντας το Case Talk, μπορείτε να ορίσετε εάν θα επιτρέπεται η λήψη ή όχι.

Εάν επιλέξετε «Εκχώρηση άδειας λήψης» και κοινοποιήσετε το περιστατικό, όλοι οι χρήστες που συνδέονται στον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των αρχείων.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Στο Web Viewer, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «Λήψη» επάνω δεξιά.

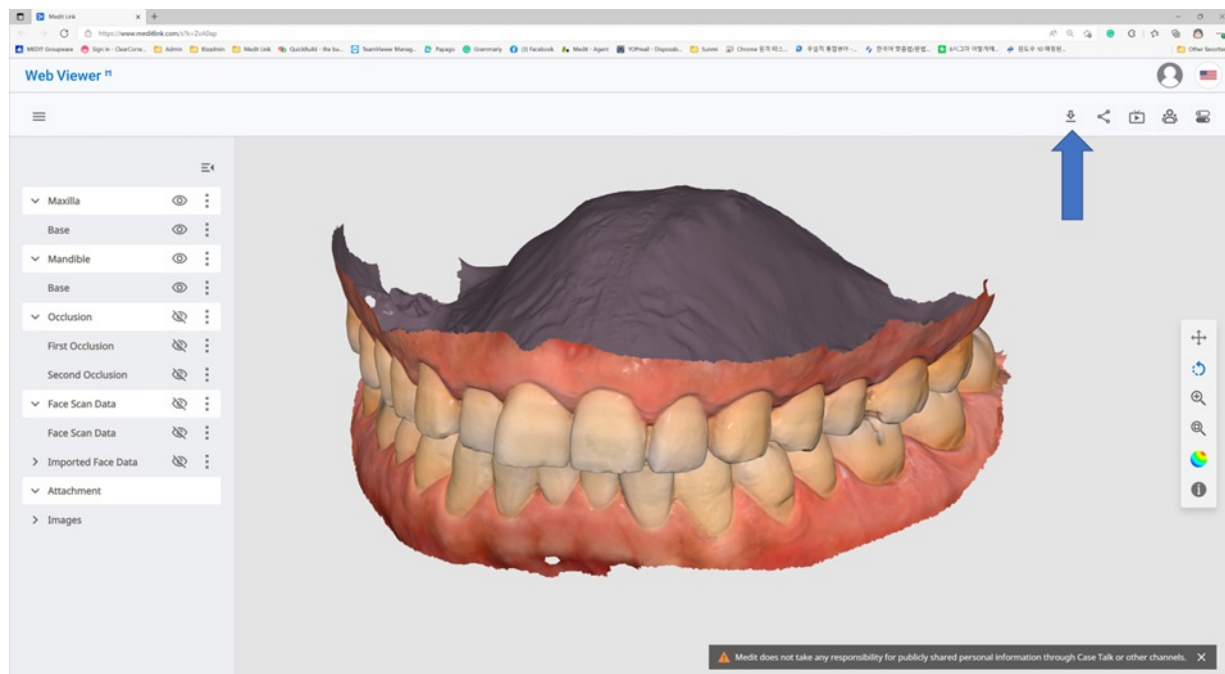

Πως να κάνετε λήψη

1. Κάντε κλικ στην «Λήψη».



2. Επιλέξτε τη μορφή πλέγματος από το παράθυρο διαλόγου λήψης.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) **OK**

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «ΟΚ».

Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών

Μπορείτε εύκολα να παραγγείτε ένα περιστατικό με δεδομένα που αποκτήθηκαν από συνδεδεμένα προγράμματα και συνημμένα δεδομένα του χρήστη.

Παραγγελία περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία για τους συνεργάτες σας στο Case Box.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγελία».
2. Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγγελία σας.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00
8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Επιλέξτε έναν συνεργάτη.
4. Ελέγξτε τις πληροφορίες προϊόντος από την καρτέλα της Λίστας παραγγελιών.
 - Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κοινοποιήσετε το όνομα του ασθενούς.
5. Ελέγξτε τα αρχεία προς παραγγελία από την καρτέλα Λίστας αρχείων.
6. Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
 - Η προεπιλεγμένη τιμή ορίζεται σε 7 ημέρες μετά την ημερομηνία παραγγελίας.
7. Μπορείτε να προσθέσετε σημείωση και ετικέτες στον συνεργάτη σας για να περιγράψετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
8. Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να στείλετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα επιλέγοντας «Παραγγελία όλων συγκλεισιακή σχέση».
9. Συνεχίστε με την παραγγελία σας.
 - **Παράβλεψη πληρωμής:** : Συνεχίστε με την παραγγελία χωρίς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πληρωμών που παρέχεται από το Medit Link. Διαθέσιμο κατά την παραγγελία από συνεργάτη με κατάσταση «Σε σύμβαση».
 - **Πληρωμή :** Χρησιμοποιήστε το σύστημα πληρωμών που παρέχεται από το Medit Link για να προχωρήσετε στην παραγγελία. Διατίθεται κατά την παραγγελία από

συμβεβλημένο συνεργάτη.

- ο OK: Προχωράμε στην παραγγελία χωρίς όρους σχετικά με την τιμή του προϊόντος. Διαθέσιμο κατά την παραγγελία από συνεργάτη με κατάσταση «Σε συνεργασία».


Ισημείωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link Κίνας.

- Παράλειψη πληρωμής
- Πληρωμή


Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)

- Αποδοχή παραγγελίας κατά τη παραλαβή.
- Οι αποδεκτές παραγγελίες θα προωθηθούν στο Work Box.

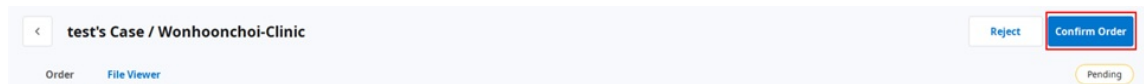


Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)

- Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία πριν την αποδεχτεί ο συνεργάτης σας.
- Τα περιστατικά που ακυρώθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

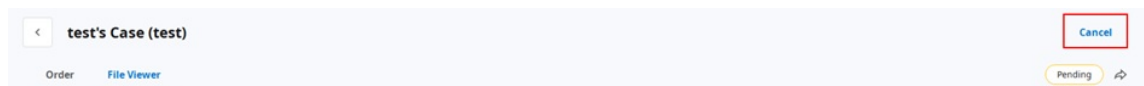

Απορριπτές παραγγελίες (In Box)

- Μπορείτε να απορρίψετε μια παραγγελία που λάβατε.
- Τα περιστατικά που απορρίφθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

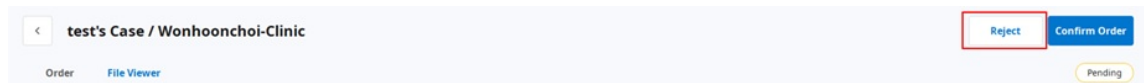

Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού που παραγγέλνεται από το Order Box στον λογαριασμό κλινικής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το περιστατικό που λάβατε από τον λογαριασμό εργαστηρίου του In Box.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Πληροφορίες παραγγελίας	Οι πληροφορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην παραγγελία είναι οι εξής: ID παραγγελίας/όνομα ασθενούς/όνομα λογαριασμού/ημερομηνία σάρωσης/ημερομηνία παραγγελίας/ημερομηνία παράδοσης/ημερομηνία λήξης παράδοσης/σημείωση. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του προϊόντος της παραγγελίας και τις πληροφορίες αποστολής.
Λίστα παραγγελιών	Η λίστα παραγγελιών εμφανίζει τις λεπτομέρειες του παραγγελθέντος προϊόντος.
Αποστολή	Εισάγετε/ελέγξτε τις πληροφορίες αποστολής.

Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)

Εισάγετε τις πληροφορίες αποστολής για το ολοκληρωμένο περιστατικό και ξεκινήστε την αποστολή.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή.
2. Εισάγετε τα στοιχεία αποστολής και κάντε κλικ στην «Καταχώριση».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Οι καταχωρημένες πληροφορίες αποστέλλονται στον συνεργάτη σας.

Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης

Μπορείτε να ορίσετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης κατά την υποβολή μιας παραγγελίας και αυτές οι πληροφορίες θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Κατά την παραγγελία από το Case Box, μπορείτε να εισάγετε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης.

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας.
- Εισάγετε την ημερομηνία/ώρα που θέλετε να παραλάβετε τα προϊόντα και προχωρήστε στην παραγγελία.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εύκολα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

Ορισμός αναμενόμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Μπορείτε να εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης για το περιστατικό που παραγγέλνατε από το In Box.

1. Ελέγξτε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης με τον συνεργάτη και προγραμματίστε εκ νέου χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επεξεργασία».



2. Εισάγετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη εάν είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν απαιτείται, μπορείτε επίσης να αφήσετε ένα σχόλιο.
3. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

4. Η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και το σημείωμα θα προωθηθούν μαζί με την παραγγελία.
 - ο Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία και τις σημειώσεις στο Order Box.
 - ο Μπορείτε να αλλάξετε την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης και οι αλλαγές θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.
5. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό του περιστατικού χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ιστορικό».



Ολοκλήρωση περιστατικών

Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)


Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, πατήστε «Ολοκλήρωση» για να ολοκληρώσετε το περιστατικό.

Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί «Μενού» στα δεξιά του κουμπιού Άνοιγμα.



Ολοκληρώστε την εργασία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Μενού» και επιλέγοντας «Ολοκλήρωση».

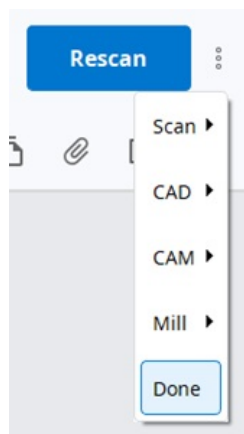


Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών

Όταν επιλέγετε τα περιστατικά από το Work Box, το κουμπί επεκτεταμένου μενού παρέχεται στην κορυφή της λίστας.



Ολοκληρώστε πολλαπλά περιστατικά ως εξής:

1. Μετάβαση στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για ολοκλήρωση.

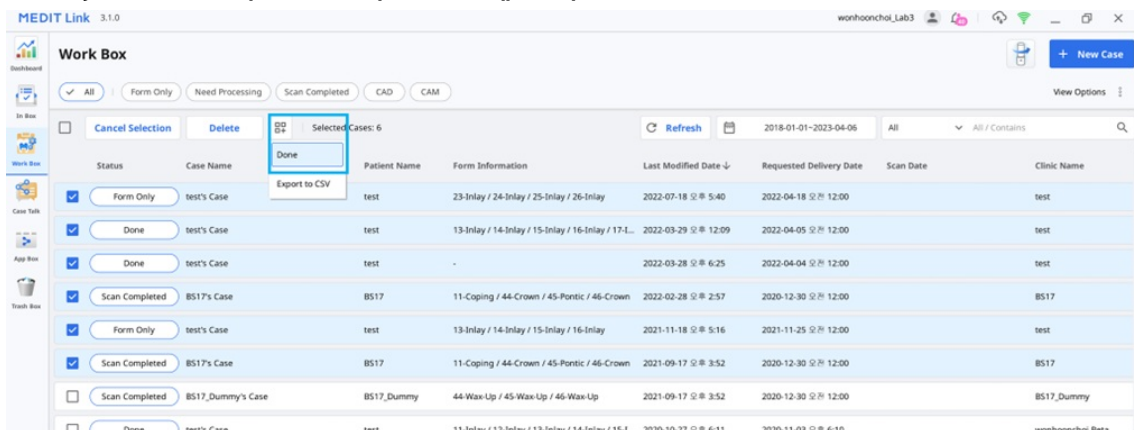

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεκτεταμένο μενού» που αναφέρεται παραπάνω.




4. Επιλέξτε «Ολοκλήρωση» από τη λίστα

Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)

Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού από το εργαστήριο, η κλινική θα πρέπει να επιβεβαιώσει το περιστατικό για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία παραγγελίας.

Εάν το εργαστήριο ολοκληρώσει την εργασία του, η κλινική μπορεί να βρει τη λειτουργία «Επιβεβαίωση παράδοσης» στο Order Box.


Κάνοντας κλικ σε αυτό, ολοκληρώνεται ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας και η κατάσταση του περιστατικού θα αλλάξει σε «Ολοκληρωμένο περιστατικό»

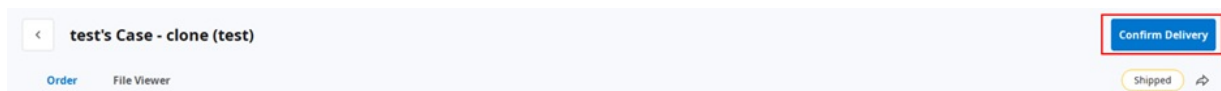

Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box

Για περιστατικά που δεν έχουν παραγγελθεί στο Εργαστήριο, μπορείτε να τα ολοκληρώσετε από το Case Box.

1. Μεταβείτε στο Case Box.
2. Επιλέξτε το περιστατικό που θέλετε να ολοκληρώσετε.

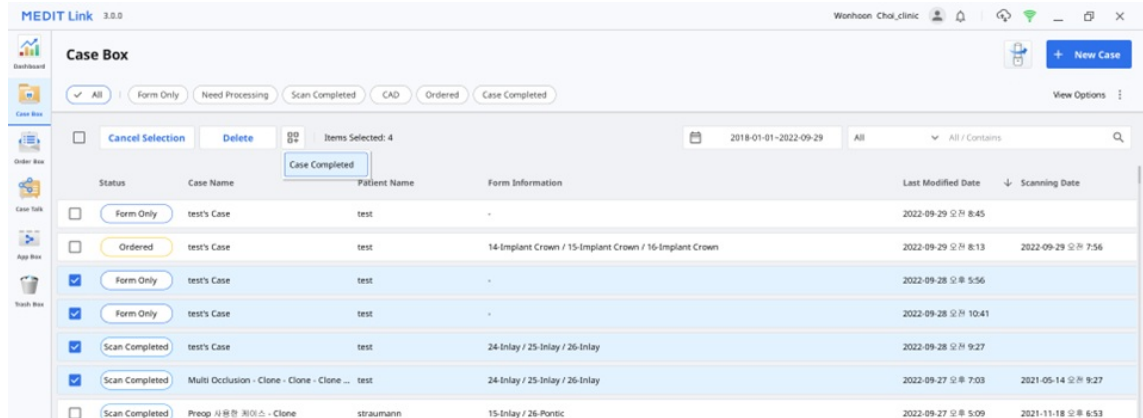

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεκτεταμένο μενού».



4. Επιλέξτε «Ολοκληρωμένο περιστατικό».

Επικοινωνία με χρήση ετικετών

Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες για το περιστατικό σας χρησιμοποιώντας ετικέτες και να κάνετε αποστολή στους συνεργάτες σας.

Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού

Μπορείτε να εισάγετε ετικέτες όταν δημιουργείτε ένα νέο περιστατικό ή επεξεργάζεστε πληροφορίες του περιστατικού.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε και να επιλέξετε ετικέτες που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε ετικέτες στο παράθυρο διαλόγου Παραγγελία κατά την παραγγελία.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού

