

USER GUIDE

Medit Link

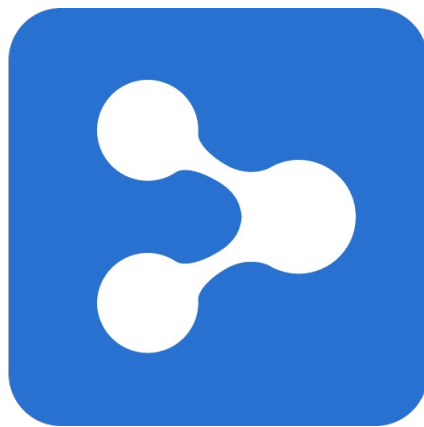


Table of Contents

Medit Link

Введение	6
Medit Link	6
Обзор сервиса	6
Облачный сервис	7
Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов	7

Medit Link > Установка

Системные требования	9
Системные требования для Windows	9
Системные требования для macOS	9
Системные требования для веб-сервиса	9
Рекомендуемые браузеры	9
Минимальные технические характеристики для мобильных устройств	9
Установка на Windows	10
Установка на macOS	12
Medit Link устанавливается в комплекте с Medit Scan for Clinics.	12

Medit Link > Начало работы

Регистрация и вход в систему	16
Веб-сайт Medit Link	16
Регистрация	16
Вход в систему и страница приветствия	18

Medit Link > Веб-сервис Medit Link

Обзор	20
Dashboard	21
Обзор Dashboard	21
Medit Insights	21
Подписаться на Medit Insights	22
Отписаться от Medit Insights	23
Case Box/Work Box	24
Фильтрация проектов	24
Фильтрация по статусу	24
Фильтрация с использованием настроек периода	24
Фильтрация по поиску	25
Сведения о проекте	25
Order Box/In Box	27
Детали заказа	27
Вкладки в Order Box/In Box	27
Case Talk	28
Создание Case Talk	28
Установка типа разрешения и параметров общего доступа	29
Детали Case Talk	31
Web Viewer	32
Аннотация	33
Комментарии	33
Совместное использование экрана в режиме реального времени	34
Дерево данных	34
Элементы управления деревом данных	34
Элементы управления 3D-моделью	35
Партнеры	37
Поиск партнеров	37

Мои партнеры	37
Приглашение партнера	38
Подписка	39
Подписка	39
Мой тарифный план	39
Облачное хранилище	40
Подписка	41
Отказ от подписки	43
Информация для выставления счетов	44
Как добавить способ оплаты	45
Как изменить способ оплаты	47
Использование промокода	48
Регистрация промокода	48
Активация промокода	49
Оплата	50
Детали оплаты (учетные записи клиник и лабораторий)	50
Информация о платежном счете (только для учетной записи лаборатории)	50
Моя информация	51
Моя учетная запись	51
Моя организация (только для учетной записи администратора)	51
Мой сканер	51
Мой прайс-лист (только для учетной записи администратора лаборатории)	52
Другое меню	53
Объявления и обновления	53
Информация Medit	53
Скачать приложение Medit Link	53

Medit Link > Приложение Medit Link

Обзор	55
Обзор разделов	55
Строка заголовка	57
Уведомления	57
Диспетчер синхронизации проектов	58
Загрузить	59
Скачать	59
Статус сетевого соединения	60
Меню	61
Dashborad	61
Case Box/Work Box	61
Вкладки в Case Box/Work Box	62
Функции в Case Box/Work Box	62
Order Box/In Box	63
Вкладки в Order Box/In Box	64
Case Talk	64
App Box	65
Trash Box	65
Настройки	66
Ведение пациентов	66
Добавление нового пациента	66
Удаление пациента	67
Объединение пациентов	67
Объявления и обновления	68
Перейти на веб-сайт Medit Link	68
Информация Medit	68
Настройки	70
Общие настройки	70
Управление хранилищем	71
Установить период	71

Локальное хранилище	71
Облачное хранилище	72
Установить подключенную программу	72
Параметры экспорта	73
Инструмент для преобразования проекта	74
Как использовать инструмент для преобразования проекта	74
Параметры прокси	76
О программе	76
Руководство пользователя	77
Просмотрщик файлов	78
Дерево данных	78
Инструменты управления моделью	78
Управление 3D-моделью	78
Управление 2D-изображением	79
Функциональные инструменты	80
Захват изображений и заметки	80
Ортодонтический захват	80
Заполнить дырки	81
Обрезка	82
Оптимизация сопоставления окклюзии	84
Движение нижней челюсти	85
Управление данными множественной окклюзии в просмотрщике файлов	86
Как управлять несколькими результатами	86
Параметры просмотра	88
Фильтры статуса	88
Элементы таблицы	89
Тип просмотра	90
Галерея	91
Список	92
Группировка	92
Сортировка	93
Фильтрация и поиск	95
Фильтрация по дате	95
Расширенные возможности поиска	95

Medit Link > Рабочий процесс

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов	97
Создание проектов	97
Создание проекта в Case Box (клиника)	97
Создание проекта в Work Box (лаборатория)	98
Редактирование проектов	98
Редактирование проекта в Case Box (клиника)	98
Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)	99
Клонирование проектов	100
Клонирование проекта в Case Box (клиника)	100
Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)	100
Удаление проекта	100
Удаление проекта (клиника и лаборатория)	101
Информация формы	102
Регистрация информации формы в Case Box	102
Ввод на вкладке «Форма»	102
Ввод на вкладке «CAD»	102
Регистрация информации формы в Work Box	102
Ввод на вкладке «Форма»	102
Ввод на вкладке «CAD»	103
Соединение зубов в мост	103
Настройка параметров сканирования	103
Medit Scan for Labs	103

Общие параметры	103
Опции по зубам	103
Добавление в Избранное	104
Как добавить в Избранное	104
Управление избранными шаблонами	104
Работа по сканированию/CAD	105
Процесс сканирования	105
Процесс CAD	105
Получение файлов результатов	106
Экспорт файлов результатов сканирования	106
Экспорт выбранных файлов	107
Экспорт линии края	108
Экспорт линии края в виде цвета	108
Экспорт линии края в виде файла	109
Экспорт списка проектов в формате CSV	110
Как экспортировать список проектов	110
Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link	111
Case Box/Work Box	111
Web Viewer	111
Как скачивать файлы	112
Заказ/управление проектами	114
Вы можете с легкостью заказать проект с данными, полученными из подключенных программ, и данными, прикрепленными пользователем.	114
Заказ проектов	114
Подтверждение заказа (In Box)	115
Отменить заказ (Order Box)	115
Отклонить заказ (In Box)	115
Проверка заказанных проектов	115
Ввод информации о доставке (In Box)	116
Управление датой доставки	116
Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)	116
Завершение работы	118
Завершение работы (Work Box, In Box)	118
Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте	118
Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов	118
Завершение работы (Case Box/Order Box)	119
Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box	119
Общение с помощью тегов	121
Добавление тегов при создании нового проекта	121
Добавление тегов при оформлении заказа	122
Просмотр тегов в сведениях о проекте	122

Введение

Medit Link

Medit Link – это инструмент для совместной работы, предназначенный для облегчения коммуникации между клиниками и лабораториями с целью оптимизации рабочего процесса для каждой из сторон.

Он предлагает дифференцированные возможности в зависимости от типа и разрешений каждой учетной записи. Программа предлагает удобный пользовательский интерфейс для управления рабочим процессом от сканирования с помощью внутриротовых и настольных сканеров и заказа проектов до разработки и производства протезов.

Medit Link включает в себя веб-сервис и компьютерное приложение.

Обзор сервиса

		Веб-сервис	Приложение
		- Регистрация и управление учетной записью - Поиск - Поиск и управление партнерами - Обмен проектами через Web Viewer с помощью общей ссылки - Доступ к проектам, созданным в приложении - Управление заказами	- Ввод информации формы - Сканирование - Размещение/получение заказов и осуществление платежей - Связь с CAD - Ведение пациентов
Клиника	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашей организацией, управление платежной информацией и обмен проектами. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Партнеры - Подписка - Оплата - Моя информация	Ввод информации формы, сканирование, связь с CAD, размещение заказов, осуществление платежей и ведение пациентов. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Ведение пациентов
	Пользователь	- Case Box - Case Talk - Моя информация	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Лаборатория	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашей организацией, управление платежной информацией и обмен проектами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Партнеры - Подписка - Оплата - Моя информация	Ввод информации формы, сканирование, связь с CAD, а также получение/управление заказами. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Пользователь	- Work Box - Case Talk - Моя информация	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Внимание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Оплата

Облачный сервис

Medit Link поддерживает автоматическую загрузку/скачивание базы данных и файлов через AWS (Amazon Web Services).

Данные, хранящиеся в облаке, автоматически синхронизируются с компьютерами сразу нескольких пользователей организации, благодаря чему они могут получить доступ к одним и тем же данным в любое время и с любого компьютера. Облачное резервное копирование и последующее восстановление сохраненных файлов обеспечивают безопасность всех ваших данных. Ваши данные сохраняются в безопасности даже в случае их потери из-за внезапного сбоя компьютера.

Облачный сервис позволяет партнерским стоматологиям и лабораториям быстро обмениваться данными без необходимости пересылать отсканированные данные по электронной почте или вручную. Все данные, включая информацию о пациентах, надежно шифруются, хранятся и передаются. Medit соблюдает медицинское законодательство и правила, такие как HIPAA и GDPR.

Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов

Medit Link предлагает собственную систему оформления и оплаты заказов.

- Medit Link позволяет заключать контракты между стоматологами и зуботехническими лабораториями и быстро и легко обмениваться данными.
- Вы можете проверять и управлять статусом заказа.

Система с поддержкой кредитных карт работает совместно с платежными модулями платформ онлайн-платежей, таких, как Stripe (www.stripe.com) и I'mPort (<http://www.iampor.kr>), что делает сервис платежей простым и удобным.

Внимание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Оплата

Системные требования

Внимание

Пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями для Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs, если хотите использовать программное обеспечение для сканирования со своим сканером.

Системные требования для Windows

	Ноутбук и настольный ПК
Процессор	Intel Core i5 2,6 ГГц или выше
Оперативная память	16 GB или выше
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) или выше/или эквивалентная видеокарте AMD
ОС	Windows 8 64 Bit (недоступно для 32 Bit) или выше

Системные требования для macOS

	Mac
Процессор	M1 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
Оперативная память	16 GB или выше
ОС	Monterey 12

Системные требования для веб-сервиса

Рекомендуемые браузеры

	Браузеры
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox

Минимальные технические характеристики для мобильных устройств

Тип	Android	iOS
Устройство	Эквивалент Galaxy S7 или выше	Эквивалент iPhone 7 или выше
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативная память	3 GB или выше	2 GB или выше
AP	Выше Snapdragon 710	A10 Fusion


Установка на Windows

Medit Link устанавливается в комплекте с программами сканирования – Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs.


1. Запустите Medit_LinkSetup.exe.
2. Выберите язык для установки.
3. Выберите папку для установки Medit Link. Пожалуйста, прочтите и согласитесь с положениями и условиями лицензии и нажмите «Установить».



4. Убедитесь, что кабель сканера отключен от компьютера, прежде чем переходить к следующему шагу. Установка не будет продолжена, если сканер подключен к компьютеру.
5. Установка программы продолжится автоматически и может занять несколько минут. Не выключайте и не отключайте компьютер от сети до завершения установки.

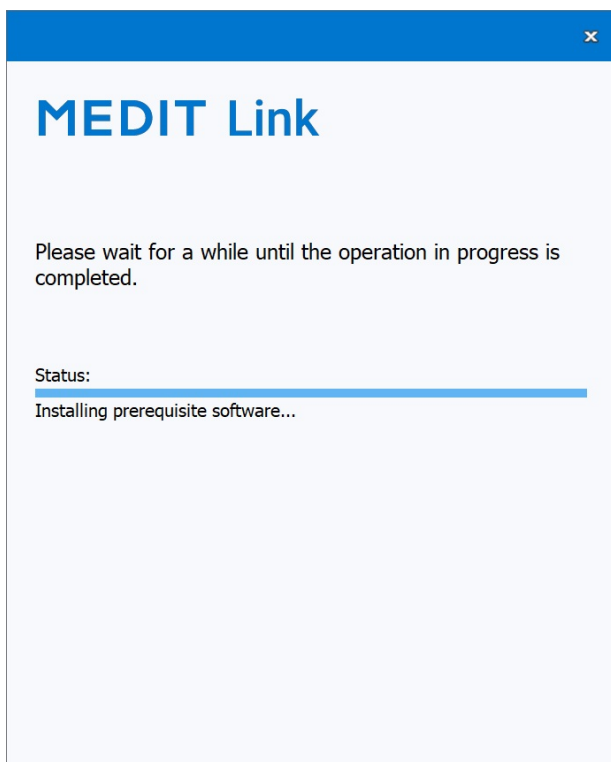

6. После завершения установки перезагрузите компьютер. Если у вас нет сканера, можно продолжить работу без перезагрузки компьютера.

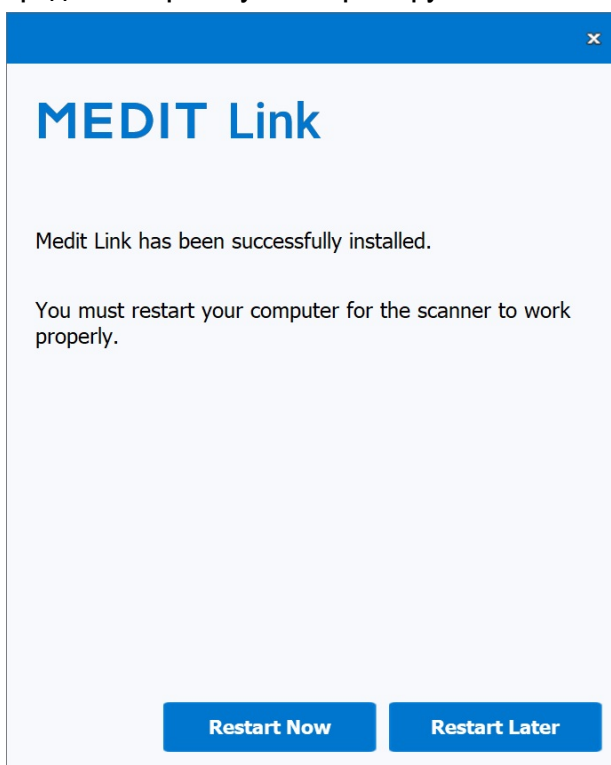


Внимание

Если вы не перезагрузите компьютер после завершения установки, сканер может работать некорректно.


Установка на macOS

Medit Link устанавливается в комплекте с Medit Scan for Clinics.


1. Запустите Medit_Link_x.x.x.pkg и нажмите «Продолжить».

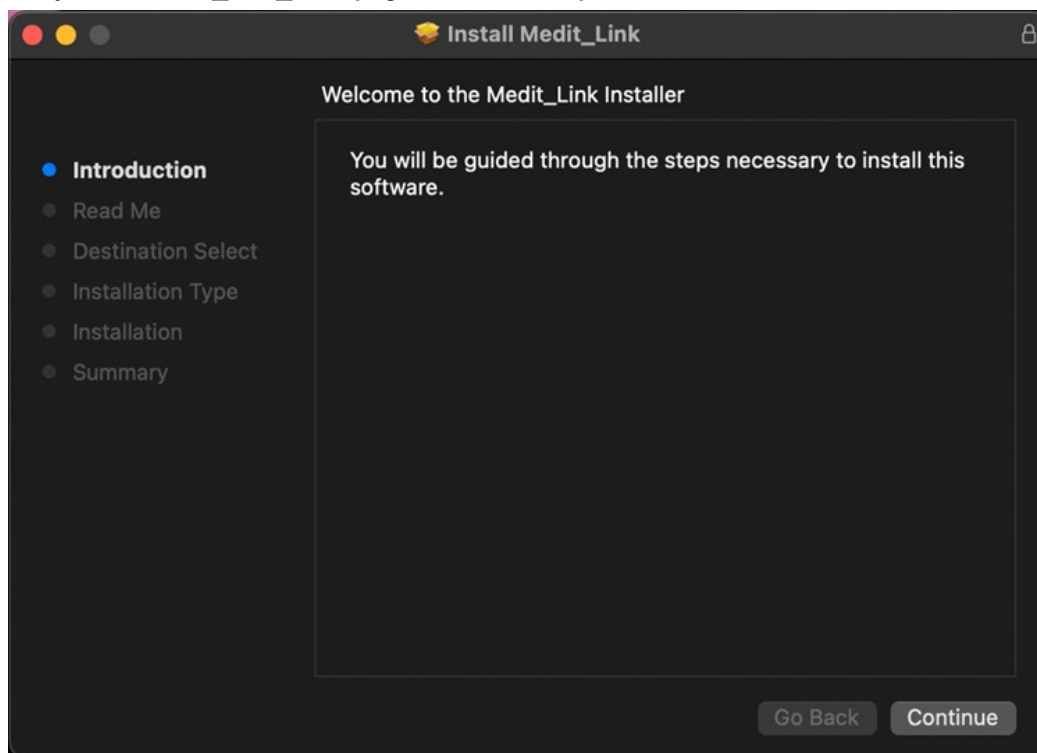


2. Прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите «Продолжить».

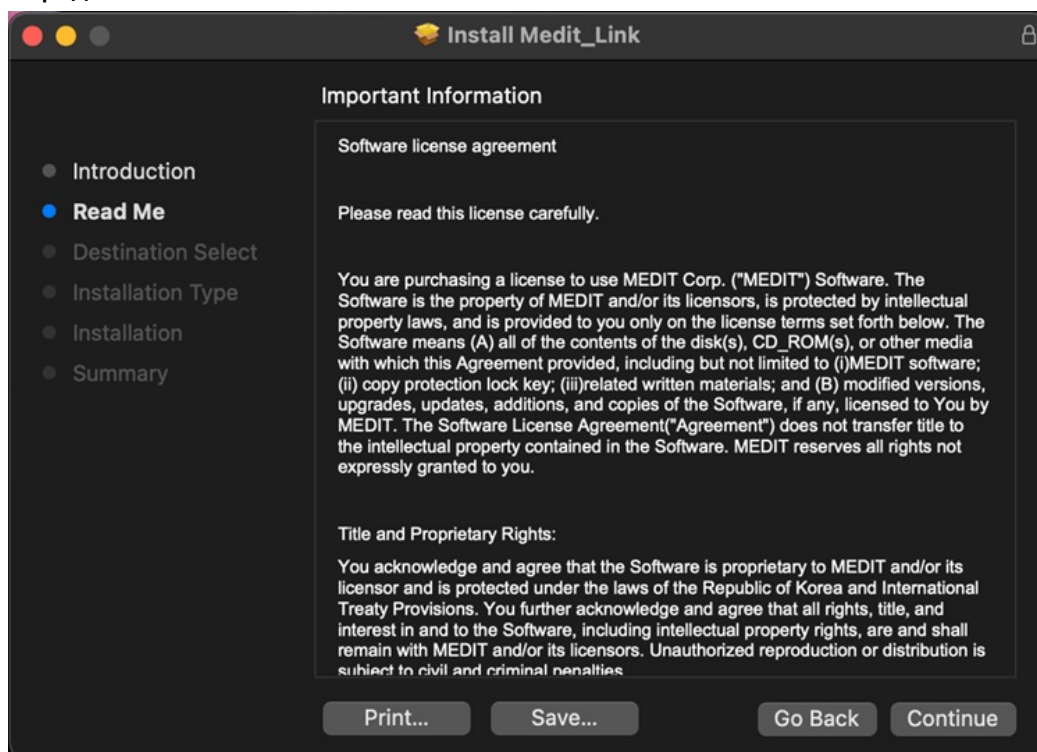

3. Выберите диск для установки и нажмите «Продолжить».

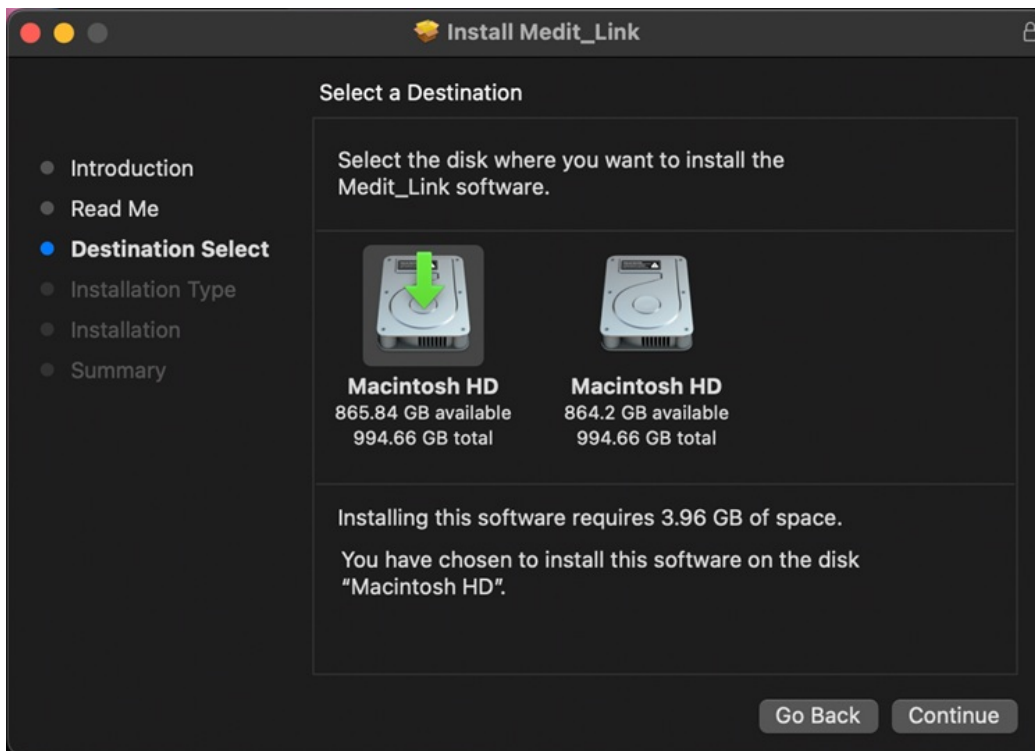


4. Чтобы изменить место установки, нажмите «Изменить место установки...».

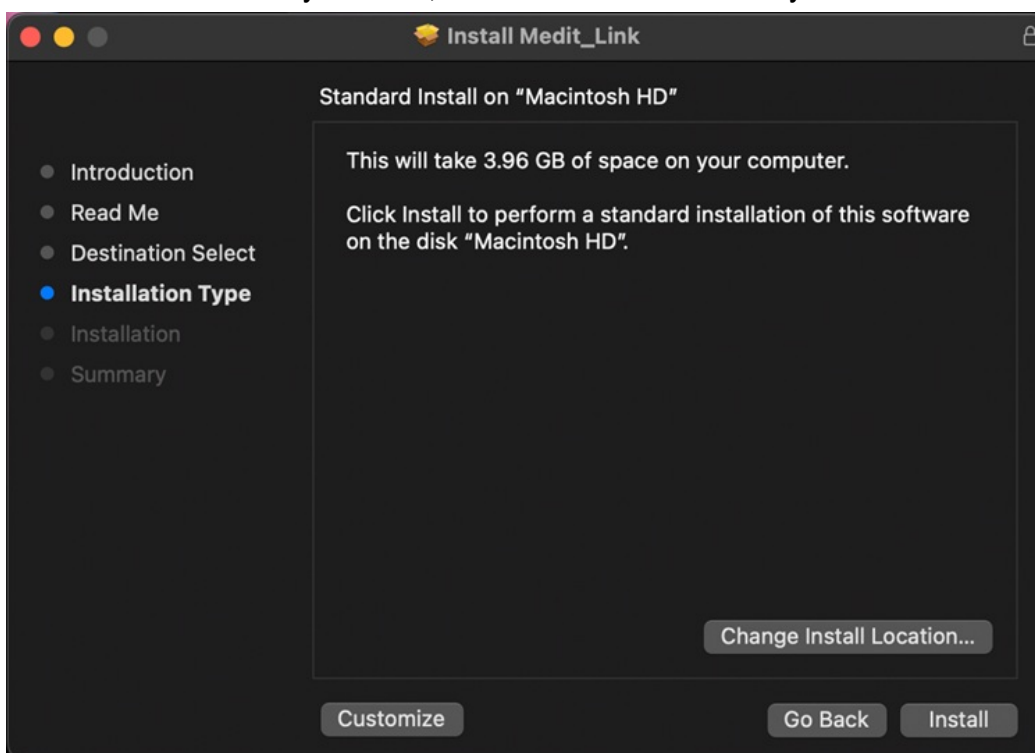


5. Нажмите «Установить» и введите свой пароль Мас, если он будет запрошен, для разрешения установки.



6. Дождитесь завершения установки.

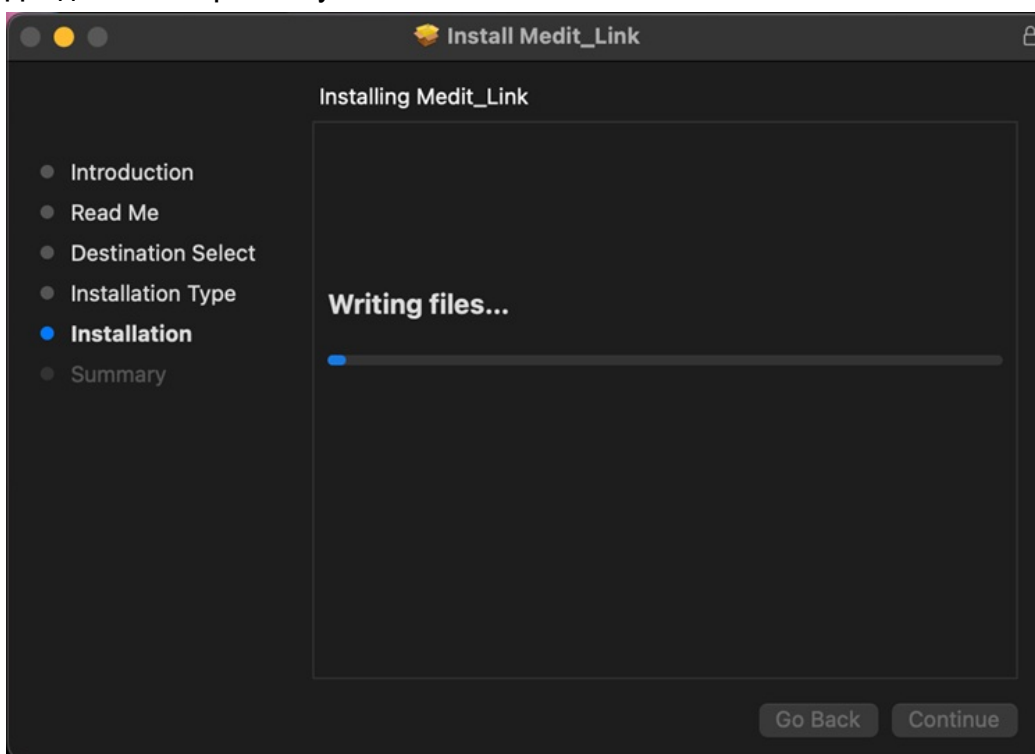

7. Нажмите «Заккрыть», чтобы закрыть окно установки.

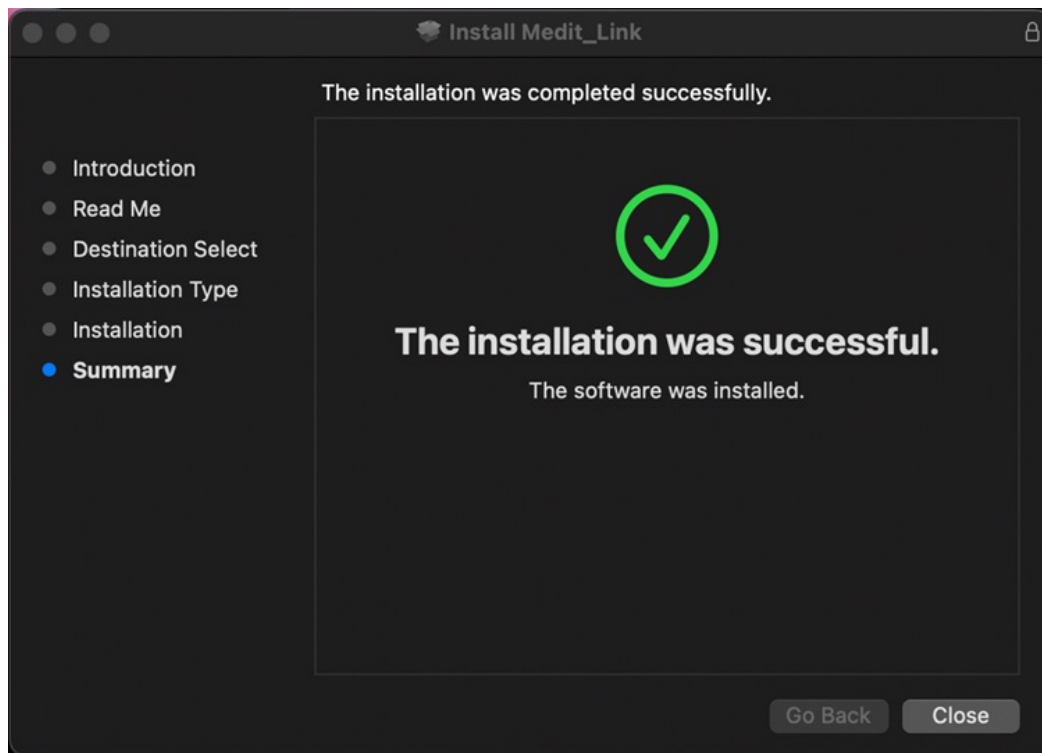

Регистрация и вход в систему

Веб-сайт Medit Link

Зарегистрируйтесь в сервисе Medit Link на сайте www.meditlink.com.



Регистрация

Для использования сервиса Medit Link вам необходимо зарегистрировать учетную запись. Вы можете использовать функции, предоставляемые в Medit Link, после создания учетной записи в качестве клиники или лаборатории.

Для регистрации подписки и использования сервиса с полными или ограниченными функциями и привилегиями, в зависимости от типа учетной записи, пользователи могут выбрать один из четырех следующих типов учетных записей:

- Клиника – Администратор
- Клиника – Пользователь
- Лаборатория – Администратор
- Лаборатория – Пользователь

Администратор обычно является представителем вашей организации и имеет неограниченный доступ ко всем функциям и сервисам Medit Link. В то время как пользователь – лишь к ее части.

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, выполните следующие действия:

1. Нажмите «У вас ещё нет учетной записи? Зарегистрироваться!» на странице входа в систему.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? ▾

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▾

- Прочтите предоставленные описания и нажмите кнопку «Зарегистрировать» для нужного типа учетной записи.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.


- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

- Введите название клиники или лаборатории, а затем, в зависимости от типа вашей учетной записи, выполните следующие действия:
 - Если вы регистрируетесь как администратор, нажмите «Проверить доступность», чтобы узнать, доступно ли введенное вами название.
 - Если вы регистрируетесь как пользователь, нажмите «Поиск». Администратор должен зарегистрировать вашу организацию до вашей регистрации.
- Заполните оставшуюся часть регистрационной формы и нажмите «Зарегистрировать». Вам будет отправлено письмо для верификации.
- Чтобы завершить процесс регистрации, подтвердите свой адрес электронной почты, используя полученную ссылку.

Вход в систему и страница приветствия

1. Введите адрес своей электронной почты и пароль на странице входа в систему и нажмите «Авторизоваться».

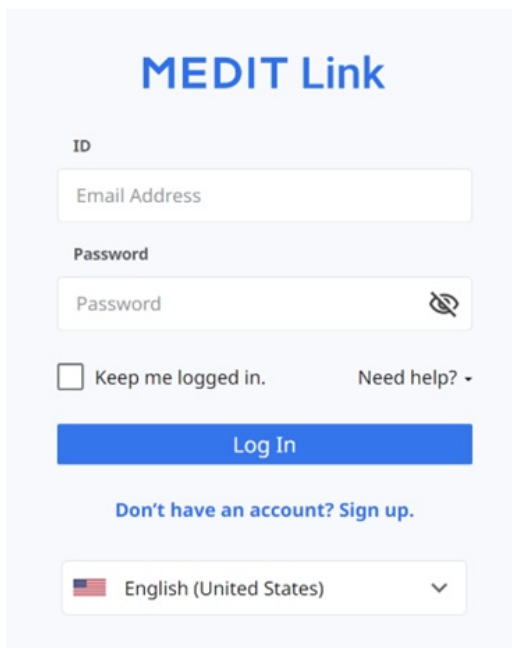

The login form for MEDIT Link features a light blue header with the logo. Below it, there are two input fields: 'ID' (labeled 'Email Address') and 'Password' (with a toggle icon). A checkbox for 'Keep me logged in.' and a 'Need help?' link are positioned above the 'Log In' button. A link for 'Don't have an account? Sign up.' is located below the button. At the bottom, there is a language selection dropdown menu currently set to 'English (United States)'.

2. Если вы не заполнили информацию об организации, появится следующее диалоговое окно.

Внимание

Чтобы пользоваться сервисами Medit Link, информацию о вашей организации необходимо ввести, используя учетную запись администратора.



The 'Welcome to Medit Link' page features a central heading and a sub-header: 'Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.' Below this, four steps are listed with circular icons: 'Address Information', 'Organization Information', 'Additional Information', and 'Scanner Information'. A blue link states: 'Here are four simple steps to get you started with your personal order system.' A paragraph follows: 'You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.' The steps are detailed in four boxes: Step 1 (Fill in your organization information), Step 2 (Select a partner clinic or lab you want to work with), Step 3 (Create a partnership and contract with your selected partner), and Step 4 (Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases). At the bottom, there are two buttons: 'Set Up Later' and 'Set Up Now'.

3. Нажмите «Настроить сейчас» и последовательно введите адрес, информацию об организации, дополнительную информацию и информацию о сканере.

Если при регистрации вы согласились получать маркетинговую рассылку, вам будет приходить полезная информация о продуктах и сервисах компании.

4. Информация, введенная на странице приветствия в веб-сервисе Medit Link, может быть отредактирована в любое время в разделе Моя информация > Моя организация.

Обзор

Medit Link

https://stage-www.meditlink.com/casbox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 직격... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloodim Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열기

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. > wonhoon choi

Case Box

Dashboard Case Box Order Box Case Talk Partners Membership Payment My Info

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 18 2023-01-06 ~ 2023-04-06 Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Обзор Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

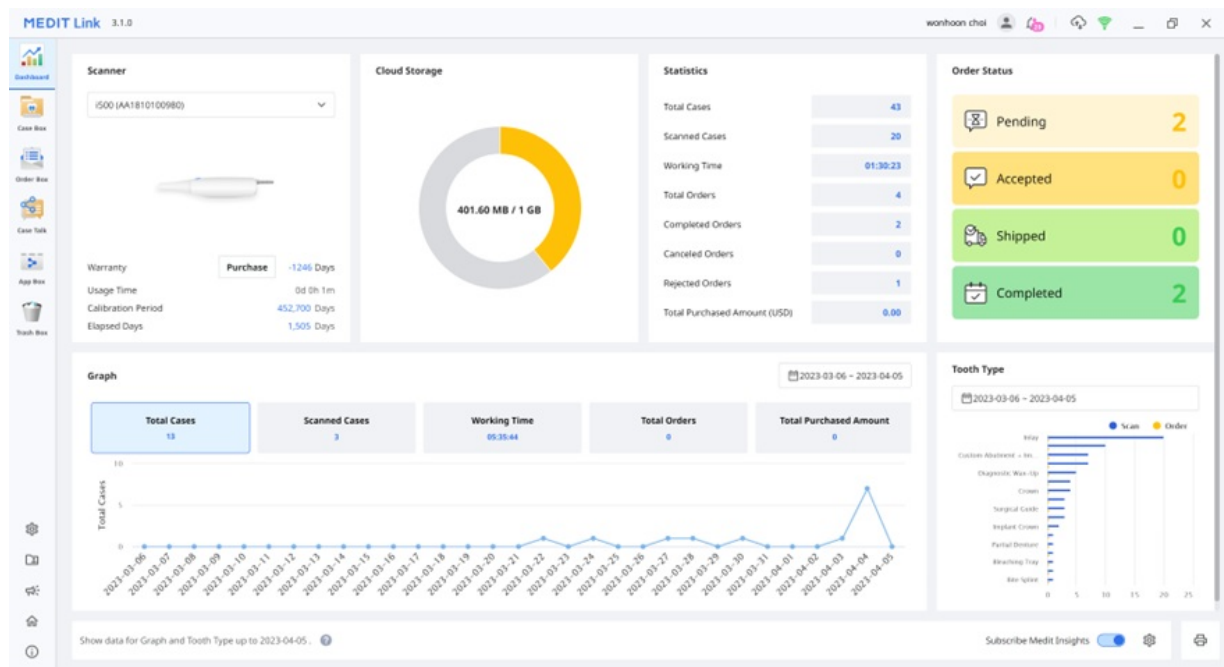

Графики и диаграммы в Dashboard отображают статистику всей работы, проделанной в Medit Link.

Сканер	Предоставляет информацию об активных сканерах, включая гарантию, время их использования, интервал калибровки и пройденное с момента последней калибровки время.
Облачное хранилище	Показывает общую емкость облака и используемый объем.
Общая статистика	Показывает статистику по проектам на основе рабочего статуса.
Статус заказа	Показывает статистику по проектам на основе статуса заказа.
График	Показывает графическое представление информации о работе по периодам.
Тип зуба	Показывает статистику количества сканирований и заказов на основе информации о лечении.


Medit Insights

Medit Insights – это сервис отчетов, который помогает вам анализировать статистику использования.

Внимание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Medit Insights

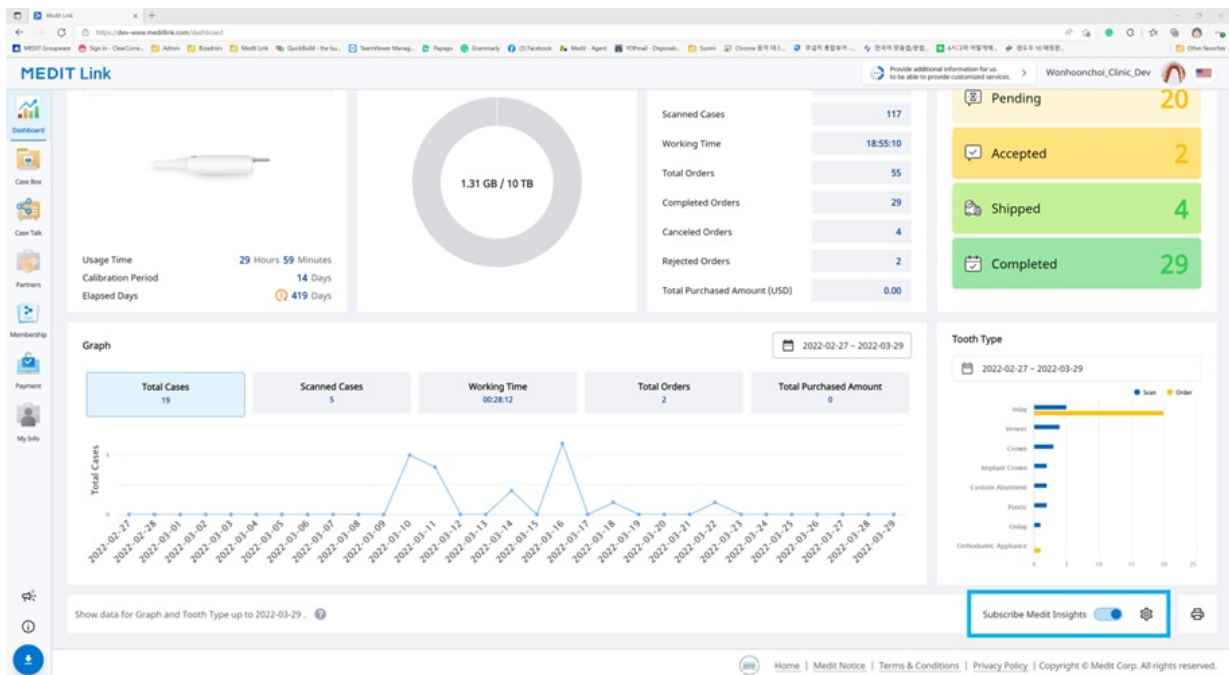

Подписаться на Medit Insights

Вы можете получать отчет по электронной почте второго числа каждого месяца. Дополнительный процесс регистрации не требуется. Просто активируйте «Подписаться на Medit Insights».

Если вы не используете адрес электронной почты, который ввели для учетной записи Medit Link, для получения отчетов от Medit Insights вы можете задать другой адрес электронной почты.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Вы будете получать электронное письмо со статистической отчетностью, как на изображении ниже, второго числа каждого месяца.

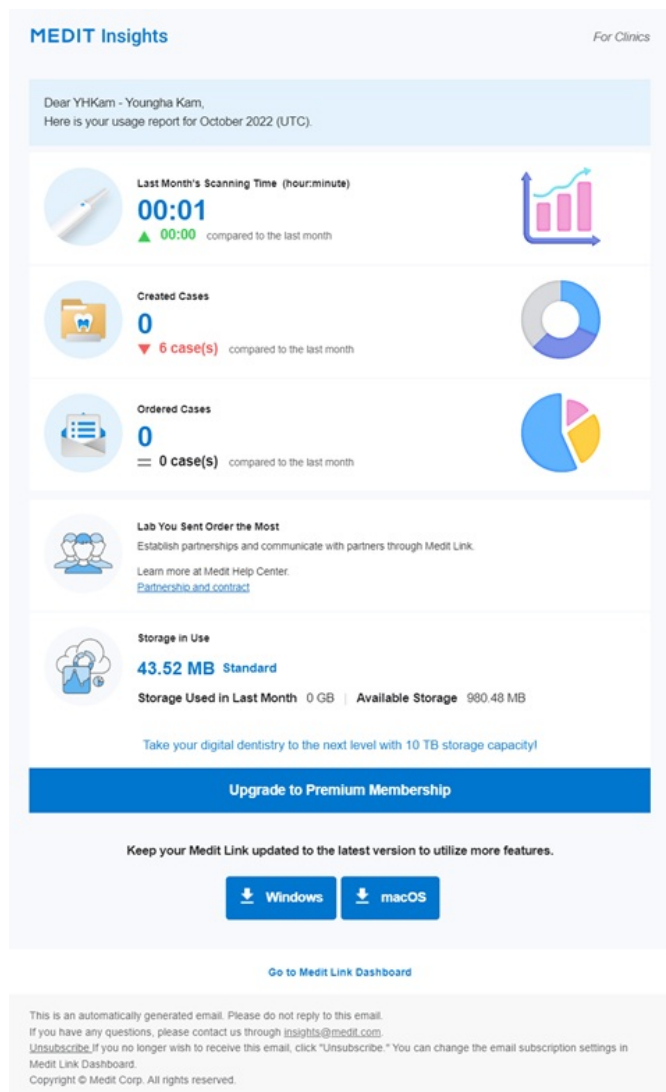


Баннер	Здесь Medit размещает полезные советы и информацию. * Если вы не хотите, чтобы баннер отображался, снимите флажок «Соглашение о маркетинге и продвижении» в разделе Моя информация > Моя учетная запись.
Статистическая информация	Здесь отображается такая статистическая информация как время сканирования, созданные проекты, лаборатория с наибольшим количеством заказов и т. п.
Скачать Medit Link	Эта кнопка содержит ссылку на скачивание Medit Link.
Dashboard	Вся статистическая информация основана на информации из вашего Dashboard. Более подробную информацию смотрите в Dashboard.

Отписаться от Medit Insights

Отключите «Подписаться на Medit Insights» в Dashboard или нажмите «Отписаться» в полученном письме.

Case Box/Work Box


Case Box (клиника) или Work Box (лаборатория) показывают все проекты, созданные пользователем в приложении Medit Link. Вы можете просматривать файлы через веб-браузер без установки отдельной программы.

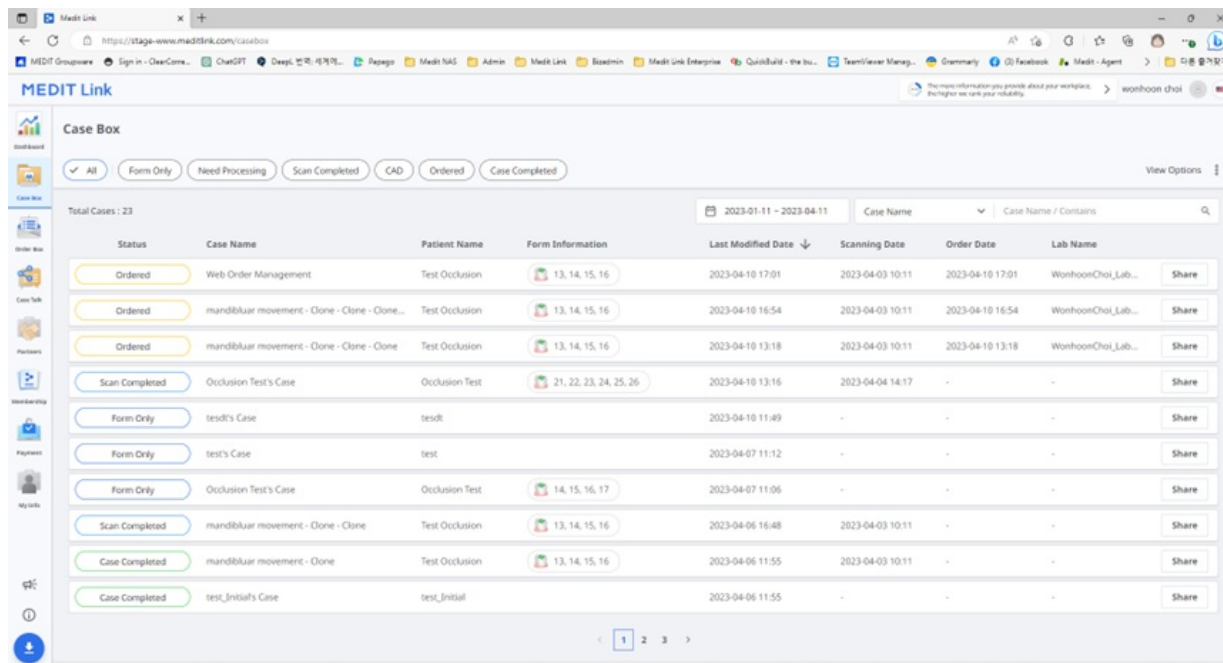

Фильтрация проектов

Фильтрация по статусу

Вы можете осуществлять фильтрацию проектов по их статусу.

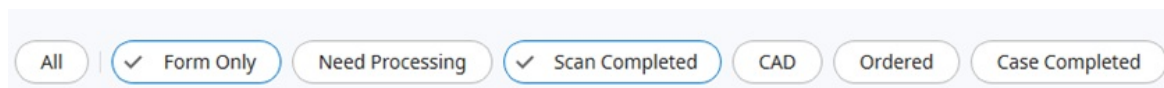

- Нажмите на статус, который хотите просмотреть. В браузере отобразятся только те проекты, которые имеют выбранный статус.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

В зависимости от типа учетной записи предоставляется следующий тип статуса:

Case Box (клиника)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (лаборатория)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Фильтрация с использованием настроек периода

Вы можете фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного вами периода.

1. Задайте период времени.



2. Выберите диапазон.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- All: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, изменения в которые были внесены в этот период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Последние 90 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 90 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты за текущий месяц.
- Предыдущий месяц: показывает проекты за прошедший месяц.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Фильтрация по поиску

Вы можете использовать возможности поиска, чтобы легко и быстро найти необходимую информацию.


Case Name

Case Name / Contains

Параметры поиска на основе учетной записи клиники/лаборатории:

Case Box (клиника)	Название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории
Work Box (лаборатория)	Название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа

Сведения о проекте

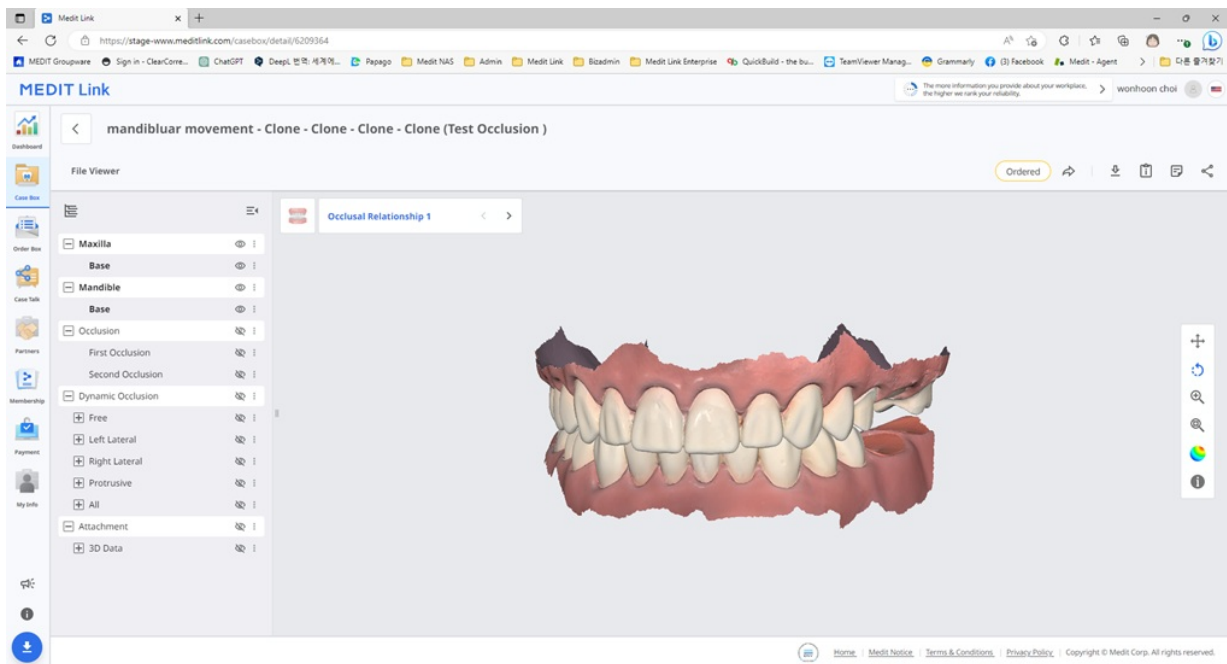

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие инструменты управления проектом:

	Статус проекта	Показывает статус проекта.
	Перейти к деталям	Создает ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Скачать	Скачивает файлы из проекта на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. Пользователи, у которых есть эта ссылка, могут получить доступ к 3D-данным в таких браузерах, как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ. Вы можете свободно делиться ссылкой с кем угодно или только с определенными людьми. Для защиты личной информации можно установить ПИН-код или срок действия ссылки.

Order Box/In Box

Order Box (клиника) или In Box (лаборатория) отображают проекты, заказанные в приложении Medit Link.

Детали заказа

The screenshot shows the Medit Link 'Order Box' interface. The main content area displays order details for a project named 'test (test)'. The order ID is 5995726. The patient name is 'test' and the partner name is 'WonhoonChoi_Lab_Stage'. The scanning date is 2023-03-28 AM 08:34 and the order date is 2023-04-05. The requested delivery date is PM 12:00 and the expected delivery date is PM 12:00. The right sidebar shows an 'Order List' with 8 items, all with a price of 0.00. The total at the bottom right is USD 0.00. Numbered callouts 1 through 6 point to specific UI elements: 1 points to the search bar, 2 to the 'Cancel' button, 3 to the 'Order' tab, 4 to the 'Pending' status indicator, 5 to the 'Patient Name' field, and 6 to the 'Order List' header.

- | | |
|---|--|
| 1 | Название проекта и имя пациента. |
| 2 | Функции для управления заказами (прием/отмена; доставка/получение). |
| 3 | Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов». |
| 4 | Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п. |
| 5 | Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги. |
| 6 | Информация о заказанном продукте и статусе доставки. |


Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация о заказе, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

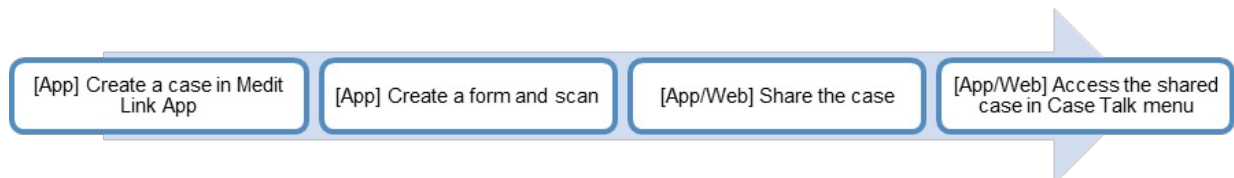


Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.


Создание Case Talk

Вы можете создать общую ссылку на проект, который был создан в Case Box/Work Box.

1. Найдите проект, которым хотите поделиться, и нажмите кнопку «Поделиться» справа.

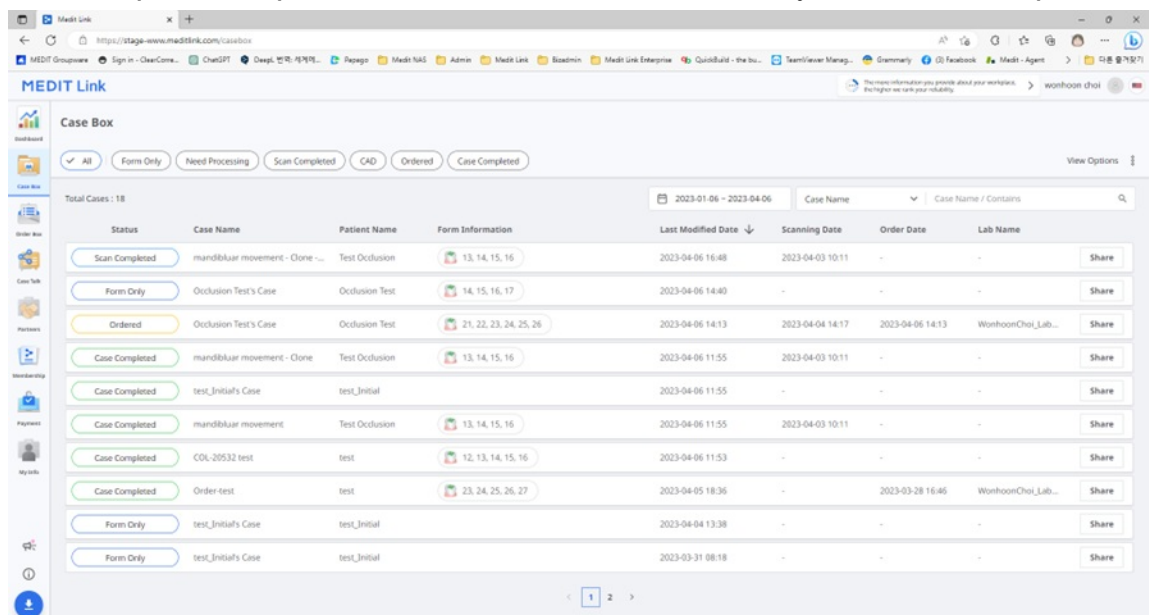

2. Выберите файлы, которыми хотите поделиться.

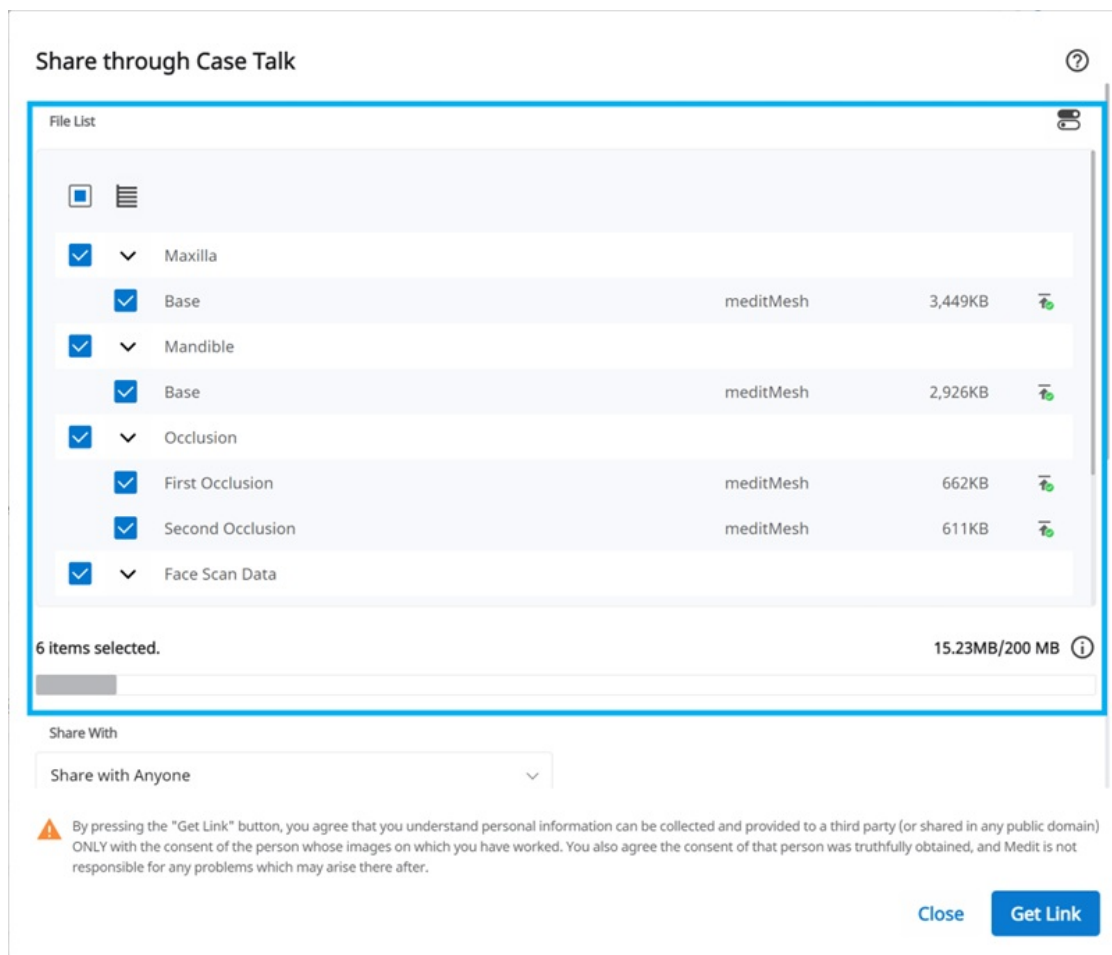

3. Установите тип разрешения и параметры общего доступа.
4. Нажмите «Создать ссылку», чтобы создать общую ссылку.

Установка типа разрешения и параметров общего доступа

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.
 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

Поделиться с	- Поделиться со всеми Создает общую ссылку. Вы можете поделиться файлами с кем угодно. - Поделиться с определенными людьми Создает и отправляет общую ссылку определенным пользователям.
Поделиться через	При выборе варианта «Поделиться с определенными людьми» вы можете поделиться с ними общей ссылкой различными способами: - Адрес электронной почты - SMS - Партнеры
Дата окончания срока действия	Установите дату окончания срока действия ссылки. После его окончания люди, с которыми вы поделились ссылкой, больше не будут иметь доступ к файлам. Срок действия ссылки можно продлить до 90 дней, начиная с текущего дня.
ПИН-код	Установите 6-значный код доступа для обеспечения безопасности данных.
Поделиться именем пациента	Если вы отметите эту опцию, увидеть имя пациента смогут все пользователи, у которых есть ссылка.
Предоставить разрешение на скачивание	Если вы отметите эту опцию, все пользователи, у которых есть ссылка, смогут скачать файлы.

Разрешить комментарии	- При выборе этого параметра вы сможете обмениваться информацией по общей ссылке. - Если отключить этот параметр, получатель сможет только просматривать ваши комментарии без возможности добавлять свои собственные.
Комментарий	Вы можете оставить сообщение в секции комментариев.

Детали Case Talk

Вы можете просматривать файлы в проекте с общим доступом. На странице деталей Case Talk доступны следующие функции:

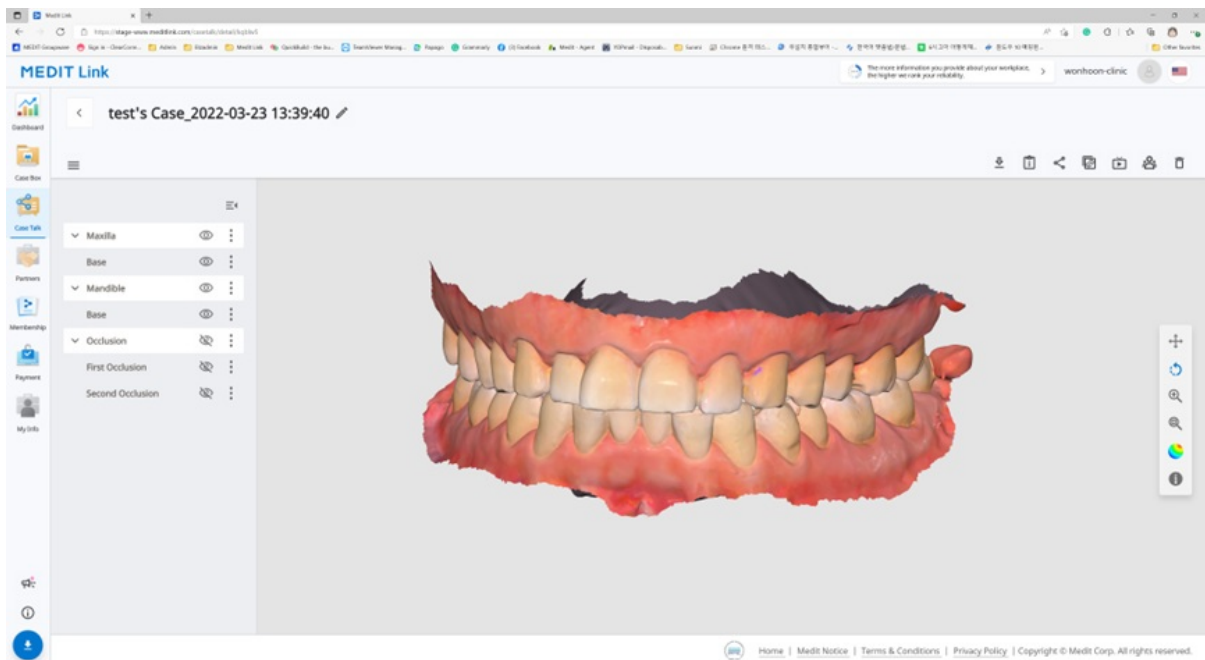

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	Копировать ссылку	Копирует общую ссылку в буфер обмена. Скопированная ссылка показывает в вашем веб-браузере файлы общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, которые получили доступ к общей ссылке.
	Удалить	Удаляет общую ссылку. Удаленная общая ссылка больше недоступна.

Внимание


Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Web Viewer

Вы можете использовать веб-браузер для просмотра совместно используемых данных в Case Talk.

Общайтесь с пользователями, имеющими доступ к ссылке, с помощью аннотаций и комментариев.

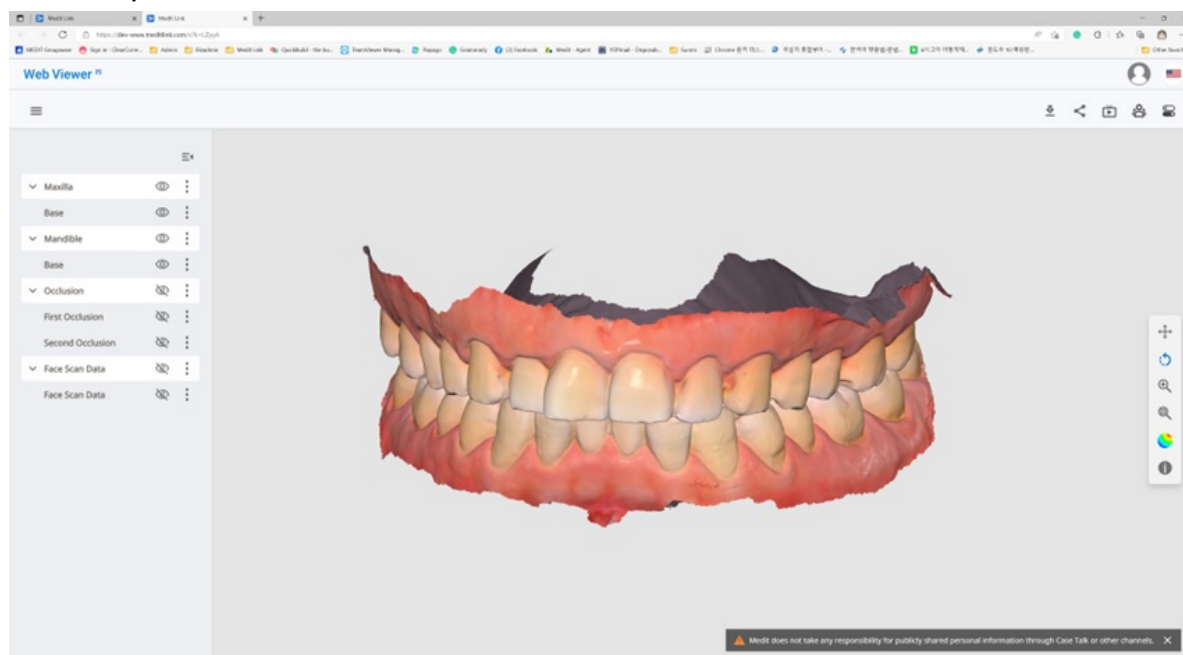

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, подключившихся к общей ссылке.
	Маркировка зуба	Изменяет систему маркировки зубов.


Внимание

Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Аннотация

Вы можете добавлять аннотации к выбранному участку 3D-модели. Добавленные аннотации могут быть просмотрены любым пользователем, имеющим доступ к ссылке.

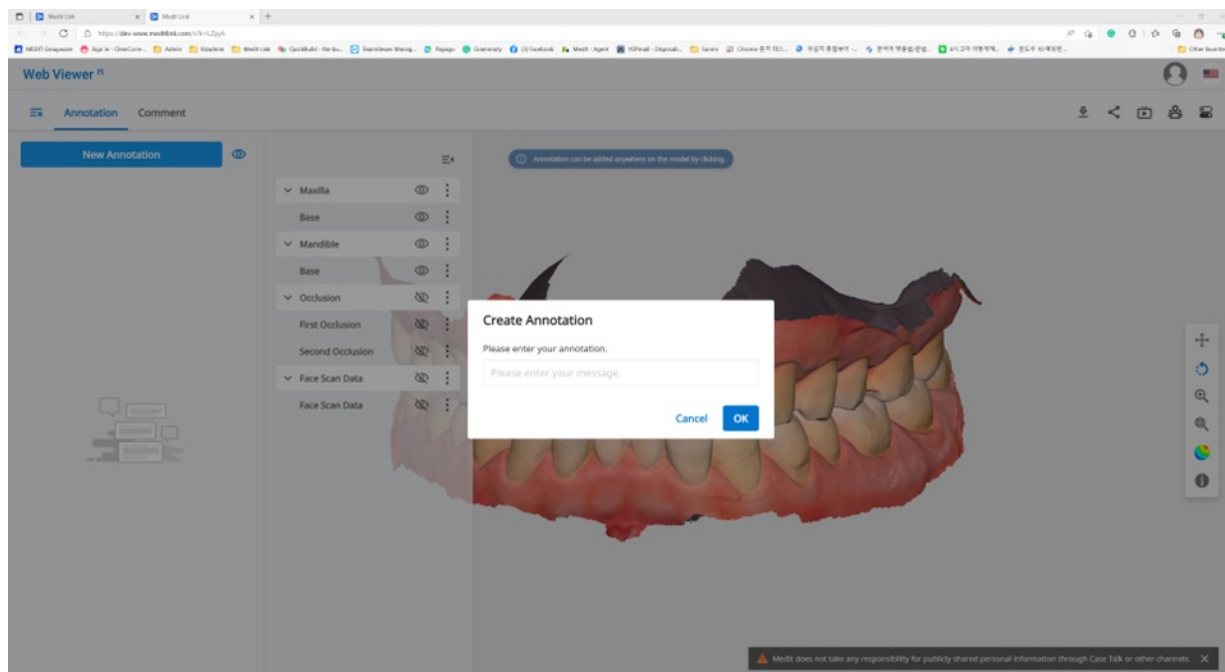

Внимание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Аннотация

1. Найдите значок меню в левом верхнем углу и выберите вкладку «Аннотация». Используйте кнопку «Новая аннотация», чтобы добавить аннотацию в любое место данных одним щелчком мыши.
2. Введите сообщение, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить ее.

3. Вы можете использовать аннотации как простой канал связи. Щелкните созданную аннотацию, чтобы ввести ответ, и нажмите «Отправить».

Комментарии

Вы можете общаться с пользователями, имеющими доступ к ссылке, через вкладку «Комментарий» в меню Web Viewer.

Внимание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Комментарий

Совместное использование экрана в режиме реального времени


Вы можете поделиться своим экраном в режиме реального времени.

Внимание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Режим реального времени

- 1. Нажмите «Режим реального времени», чтобы поделиться своим экраном Web Viewer с подключенными пользователями.

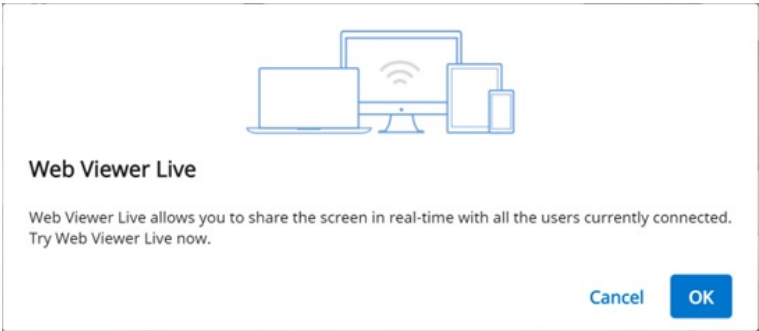


- 2. Нажмите «ОК», чтобы начать совместное использование экрана.
- 3. Пользователи, которые получили доступ к ссылке, должны согласиться на совместное использование экрана.
- 4. Экран пользователя, инициировавшего совместное использование экрана, синхронно отображается с экраном пользователя, получившего запрос.

Дерево данных





Все данные группируются и отображаются в соответствии с атрибутами в дереве данных. Вы можете показывать или скрывать данные, настраивать прозрачность и т. д.

Элементы управления деревом данных

Показать/скрыть	Нажмите на значок глаза, чтобы отобразить или скрыть данные. Управляйте видимостью данных в виде группы или отдельного файла.
Непрозрачность	Наведите курсор мыши на видимый элемент, чтобы увидеть ползунок для настройки прозрачности. Используйте его, чтобы изменять прозрачность ваших данных. preoperationmaxillary.meditMe

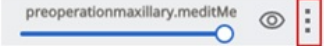Расширенное меню	Расширенное меню находится справа от каждого элемента дерева данных. Оно включает следующие параметры:  • Показывать только это: скрывает все другие данные, кроме текущих. • Скрыть: скрывает текущие данные. • Дублировать: копирует данные в текущем проекте. • Экспортировать: сохраняет данные на локальный ПК. • Удалить: удаляет текущие данные или группу данных.
------------------	---

Элементы управления 3D-моделью

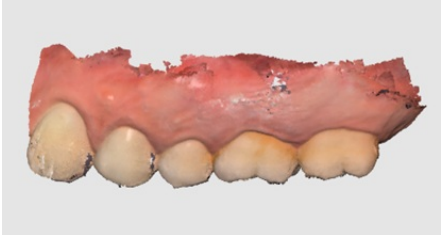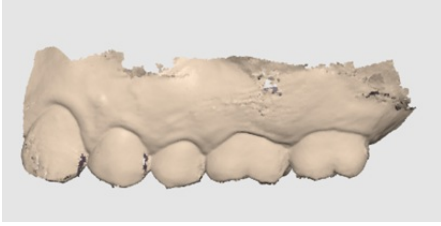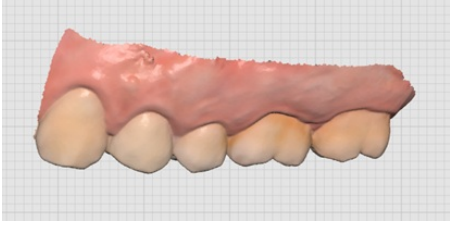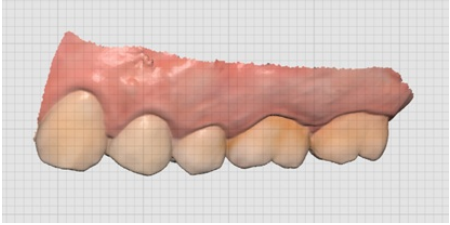	Панорамировать	Перемещает модель.
	Повернуть	Поворачивает модель.
	Увеличить/уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
	Режим отображения модели	Отображает данные в реальных цветах текстуры. 
		Отображает данные одним цветом. 
	Настройки сетки (mm)	Показывает сетку на заднем плане. 
		Накладывает сетку поверх модели. 

		Выключить сетку	Скрывает сетку.
---	--	-----------------	-----------------

Партнеры

Вы можете искать потенциальных партнеров, чтобы запросить партнерство, а также просматривать список текущих партнеров и партнеров с контрактами.


Внимание

Сервисы, использующие Google Maps, недоступны в Medit Link China.

Поиск партнеров

Поиск пользователей Medit Link можно осуществлять по названию и/или адресу их организации.

По результатам поиска вы можете отправить запрос на партнерство той организации, с которой хотели бы работать.

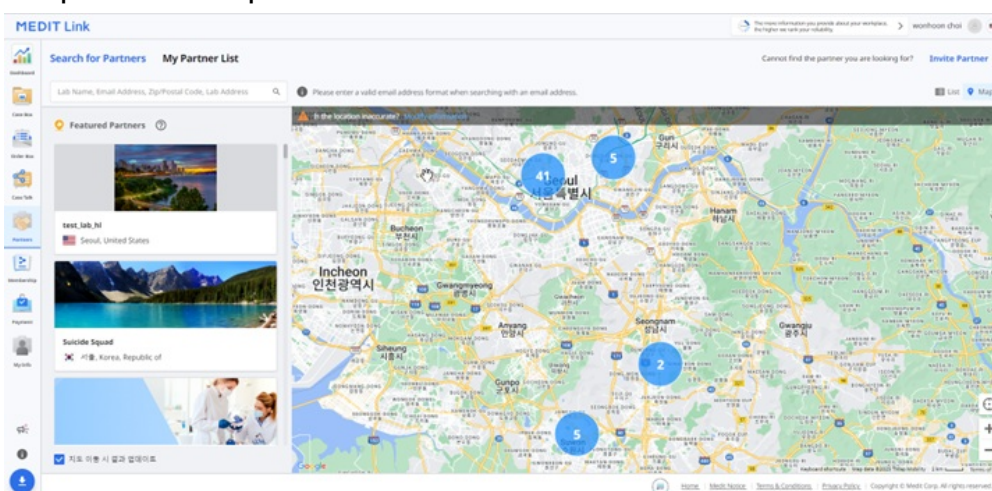


Мои партнеры

В разделе «Мои партнеры» вы можете просмотреть свои текущие партнерские отношения и контракты со всеми вашими существующими партнерами.

Чем контракт отличается от партнерства?

После того как вы станете партнером какой-либо компании, вы можете отправить ей запрос на заключение контракта.

- Если ваш партнер примет запрос на заключение контракта, вы сможете перейти к оплате размещенных заказов.

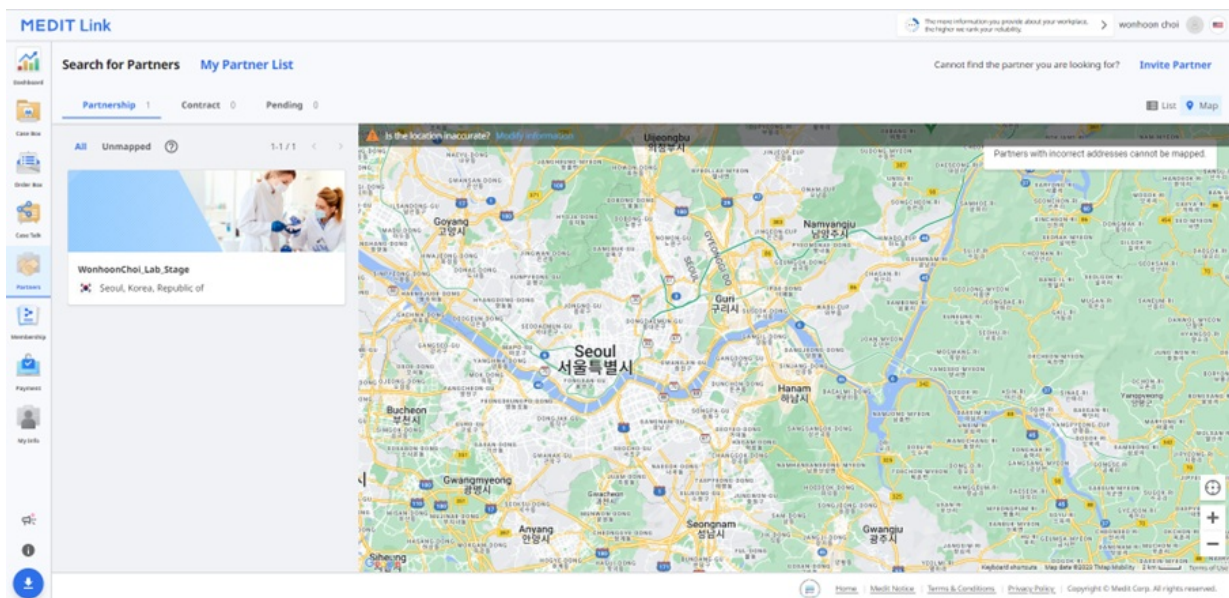

Внимание

Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Контракт

Приглашение партнера

Если у вас есть организация, с которой вы хотите работать, вы можете пригласить ее присоединиться к Medit Link. Партнерство будет создано автоматически, как только эта организация примет приглашение.

1. Нажмите «Пригласить партнера» в левом верхнем углу экрана.
2. Введите адрес электронной почты поставщика, с которым вы хотите работать, и отправьте ему приглашение с запросом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Как только приглашенная организация примет приглашение и зарегистрируется в Medit Link, партнерство будет установлено автоматически.

Подписка

Политика сервиса подписки Medit Link направлена на создание более обширной цифровой среды, постепенно расширяющейся для предоставления различных сервисов на основе облачной платформы.

С помощью нашей новой политики подписки мы стремимся предоставить нашим клиентам более последовательный и персонализированный опыт.

Доступны два тарифных плана:

Standard

- Бесплатный стандартный тарифный план для всех зарегистрированных пользователей
- 1 GB облачного хранилища
- Для новых пользователей

Premium

- Платный тарифный план
- 10 TB облачного хранилища
- Для пользователей с большим количеством проектов и различных данных
- Бесплатная пробная версия на один месяц

	Standard	Premium
Облачное хранилище	1 GB	10 TB
Ежемесячная оплата	Бесплатно	\$0,99/месяц
*Необработанные данные не будут учитываться при расчете занятого объема облачного хранилища.		

Внимание

Тарифные планы будут доступны в Medit Link China. Вы можете получить тарифный план Premium бесплатно до его официального выхода.

Подписка

The screenshot shows the Medit Link web application. The main content area is titled 'My Plan' and features an illustration of a person using a smartphone. Below the illustration, it says 'Standard Free'. A list of benefits is provided: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A blue 'Subscribe' button is at the bottom right of this section. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a circular progress indicator for 353.21 MB / 1 GB. Below the indicator, there are two sections: 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB), each with a checkbox and a 'Delete' button. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem' options.

Мой тарифный план

В левой части окна вы можете увидеть, какой тарифный план вы сейчас используете. Здесь вы также в любое время можете изменить статус подписки.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Облачное хранилище

В правой части окна вы можете управлять своим облачным хранилищем.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago



13.74 GB / 10 TB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐	Raw Data Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	147.52 GB
☐	Result Files & Attachments Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	13.74 GB


Установить период	Установите определенный период для удаления данных, созданных в течение этого периода времени. • Все: показывает все файлы. • 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя. • 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц. • 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев. • 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.
Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Но, при необходимости, вы можете здесь управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента и т. п.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложения занимают место в облаке. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Подписка

Если в настоящее время вы используете тарифный план Standard или тарифный план Premium с промокодом, вы можете оформить подписку на тарифный план Premium.


Оплата осуществляется через сервис Stripe (www.stripe.com).

1. Нажмите кнопку «Подписаться».

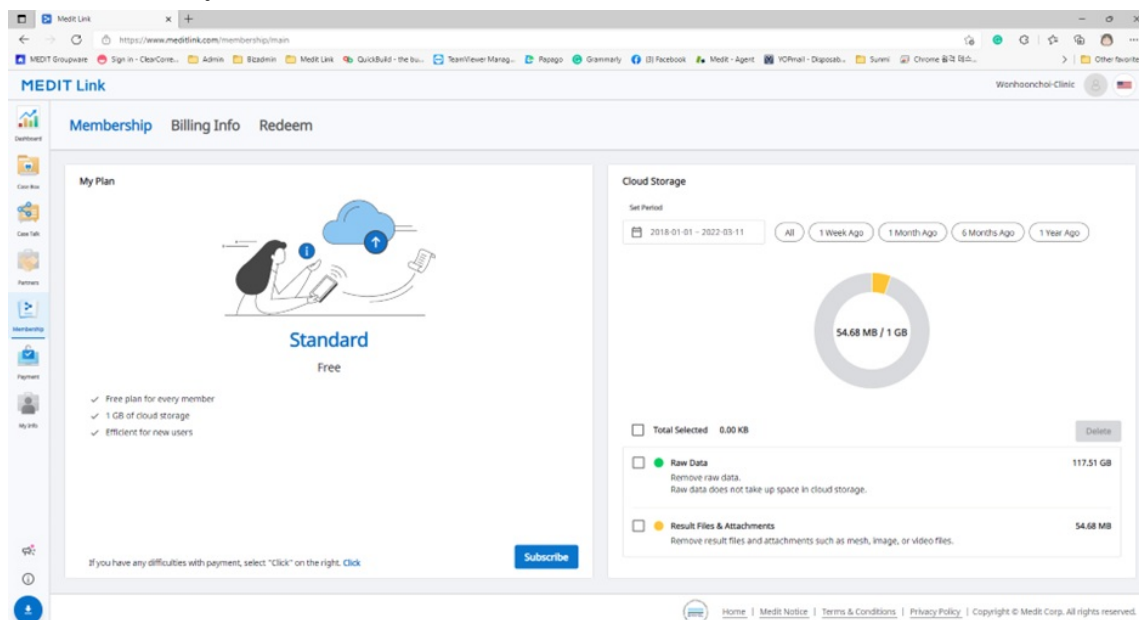

2. Просмотрите описание тарифного плана Premium и снова нажмите «Подписаться».

Subscribe Membership

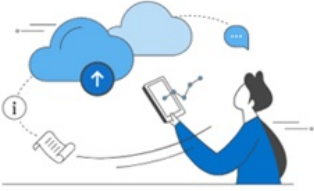

Premium
0.99\$ USD / Monthly
1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Проверьте цену и условия и введите информацию, необходимую для оплаты. Затем нажмите «Подписаться».

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription - \$0.99 100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by **stripe** | [Terms](#) | [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Оплата может занять несколько секунд. По завершении вы увидите сообщение с подтверждением:

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close


Отказ от подписки

Вы можете отказаться от подписки в любое время. После отказа от подписки вы по-прежнему сможете использовать тарифный план Premium в течение оставшихся дней оплаченного месяца. Начиная со следующего дня оплаты, ваш тарифный план будет изменен на тарифный план Standard, а объем облачного хранилища будет ограничен 1 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование данных не будет производиться, и функции «Заказ» и «Поделиться» будут недоступны.

1. Нажмите «Отписаться».

The screenshot shows the MEDIT Link web interface. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The left sidebar contains various icons for navigation. The main content area is titled 'My Plan' and displays the 'Premium' plan for 0.99\$ USD / Monthly. Below the plan details, there is a list of benefits: 'A subscription plan', '10TB cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial after subscription'. At the bottom of the plan details, there is a red box around the 'Unsubscribe' button. To the right of the plan details is the 'Cloud Storage' section, which shows a storage usage gauge at 0.00 KB / 10 TB and a list of files for deletion.

2. Нажмите «Отменить подписку».

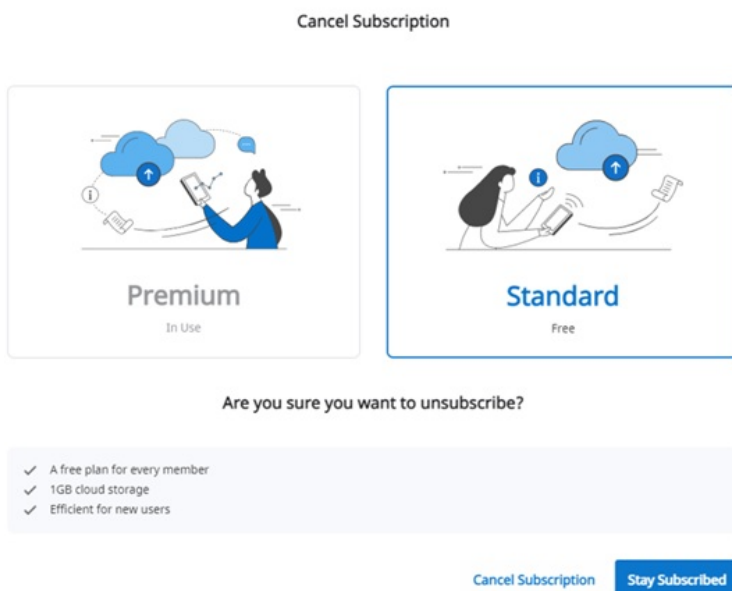


3. Чтобы подтвердить, что вы хотите отказаться от подписки, снова нажмите «Отменить подписку» в новом всплывающем окне.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. Ваша подписка отменена.
5. Начиная со следующего дня оплаты, ваш тарифный план будет изменен на тарифный план Standard, а объем облачного хранилища будет ограничен 1 GB. Если объем облачного хранилища будет превышен, резервное копирование данных не будет производиться, и функции «Заказ» и «Поделиться» будут недоступны.

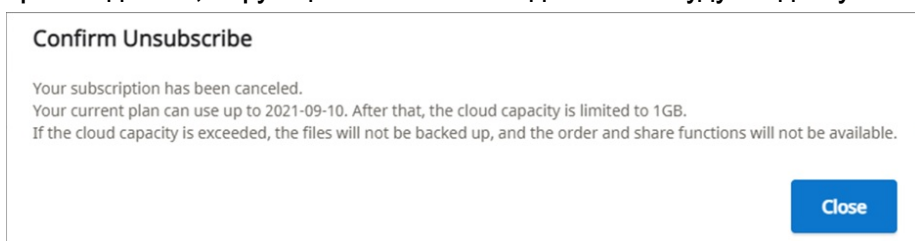

Информация для выставления счетов

Вы можете просмотреть историю платежей по подпискам, включая счета для каждого платежа. Также вы можете добавить или изменить способ оплаты, который будет применяться начиная со следующего запланированного платежа.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe

Below this, there is a 'Billing History' table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Как добавить способ оплаты

1. Нажмите «Редактировать способ оплаты».

This screenshot is identical to the previous one, but with a red rectangular box highlighting the 'Edit Payment Method' button located next to the current payment method details.

2. Нажмите «Добавить способ оплаты».

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Введите необходимую информацию и нажмите «Добавить».

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. вновь добавленный способ оплаты будет установлен в качестве используемого по умолчанию и будет использован для следующего платежа.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Visa **** 4242

Expires 11/2021



+ Add payment method

Как изменить способ оплаты

1. В диалоговом окне выставления счетов нажмите на значок расширенного меню рядом с тем способом оплаты, который вы хотите изменить.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

Visa **** 5556 Default

Expires 11/2021



Visa **** 4242

Expires 11/2021



+ Add payment method

2. Нажмите «Использовать по умолчанию», чтобы установить выбранную карту в качестве

способа оплаты по умолчанию.

The screenshot shows a 'Billing' page with two sections: 'CURRENT PLANS' and 'PAYMENT METHODS'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards. The first card is marked 'Default' and expires 11/2021. The second card expires 11/2021 and has a three-dot menu icon. Below the cards is a '+ Add payment method' link. A red box highlights two buttons: 'Make default' and 'Delete'. At the bottom, there is a 'BILLING INFORMATION' section.

Использование промокода

Зарегистрируйте промокод, предоставленный в рамках промоакции. Вы можете использовать тарифный план Premium вместе с промокодом.

Регистрация промокода

1. Введите промокод и нажмите «Зарегистрировать».

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. At the top, there are tabs for 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The 'Redeem' tab is active. Below the tabs, there is a 'Register Redeem Code' section with a text input field for the 'Redeem Code' and a 'Register' button. Below this is a 'My Redeem Code' section with a table. The table has columns: Promotion, Code Number, Dealer Name, Registration Date, From, To, and Status. The table is currently empty, with a message 'No search results were found.' at the bottom. The footer contains links for Home, Medit Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Прочтите уведомление и выберите во всплывающем диалоговом окне

«Зарегистрировать» или «Применить».

- **Зарегистрировать**: регистрирует промокод. Вы можете активировать и использовать промокод позже после регистрации.
- **Применить**: регистрирует и активирует промокод. Скидка по промокоду начинает действовать немедленно.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Активация промокода

Вы можете зарегистрировать несколько промокодов, но вам необходимо активировать тот, который вы хотите использовать.

1. Нажмите кнопку «Активировать» рядом с тем кодом, который хотите использовать. Если код со статусом «Активен» отсутствует, тот код, который вы выберете, будет применен немедленно. Если какой-либо код уже активирован, его статус изменится на «Waiting», и вместо него будет использоваться тот, который вы выбрали. Когда срок действия текущего промокода истечет, промокод в статусе «Waiting» будет автоматически активирован повторно.

2. **Внимание**

В статусе «Waiting» может находиться только один промокод.

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Оплата

Внимание


Следующий сервис недоступен в Medit Link China:

- Оплата

Детали оплаты (учетные записи клиник и лабораторий)

На странице деталей оплаты вы можете просмотреть историю платежей и транзакций между вами и вашими партнерами.

Информация о платежном счете (только для учетной записи лаборатории)

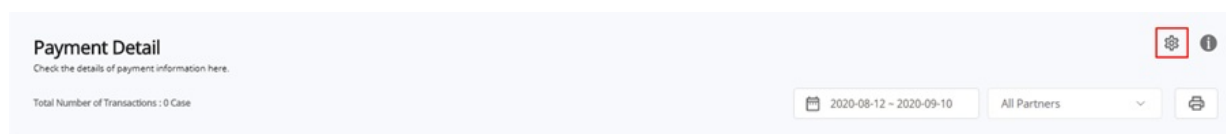

Эта функция доступна только для администратора учетной записи лаборатории, чтобы он мог вводить информацию, необходимую для получения оплаты от ваших партнеров.

- Вы должны ввести данные своего платежного счета, чтобы ваши партнеры могли размещать заказы через систему онлайн-платежей.

Внимание

Если вы выберете страну, в которой поддерживается Stripe, вы будете перенаправлены на страницу этой платформы, нажав кнопку регистрации в Stripe. Вы можете выбрать Южную Корею, затем ввести номер местного банковского счета для получения платежа, и КСР обработает ваш платеж.

Моя информация

Моя учетная запись

Здесь вы можете просмотреть и отредактировать введенную при регистрации информацию, а также проверить статус подписки.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1 JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) [▼](#)

Country
Korea, Republic of [▼](#)

1 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Моя организация (только для учетной записи администратора)

Здесь вы можете просмотреть и отредактировать информацию о вашей организации. Этот раздел доступен только для учетной записи администратора.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[✓ Address Information](#) [✓ Organization Information](#) [○ Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1 Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
1 Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

1 Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of [▼](#)

State/Province *
Seoul

1 If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Мой сканер

Здесь вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах для данной учетной записи.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Мой прайс-лист (только для учетной записи администратора лаборатории)

Здесь вы можете ввести информацию о продуктах, которые предлагает ваша лаборатория, и ценах на каждый из них.

My Account
My Organization
My Scanner
My Price List ⓘ

Teeth
Arch
AED (1:1)

☒ All (99/557)
☐ Inlay (8/12)
☐ Onlay (8/12)
☐ Coping (10/17)
☐ Denture Coping (5/5)
☐ Crown (15/26)
☐ Pontic (23/36)
☐ Post & Core (3/4)
☐ Veneer (8/11)
☐ Implant Crown (12/53)
☐ Custom Abutment (2/3)
☐ Surgical Guide (1/1)
☐ Offset Substructure (4/5)
☐ Partial Denture (0/7)
☐ Diagnostic Wax-Up (0/1)
☐ Custom Abutment + Implant Crown (0/159)
☐ Custom Abutment + Coping (0/45)
☐ Post & Core + Crown (0/100)
☐ Post & Core + Coping (0/60)

☐	Name	Type	Method	Material	Price
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	\$6.03
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

Внимание

- После того как вы заключили контракт с партнером, ваш партнер может оформить заказ на ваши продукты на основе этого списка продуктов и прайс-листа.
- Если у вас с вашим партнером установлено только партнерство, Medit Link не поддерживает заказы, для которых требуется информация прайс-листа.

Другое меню

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Информация Medit

Здесь вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Medit Academy, канал Medit Academy на YouTube и Справочный центр Medit.

Need more help?

 **Medit Academy** >

 **YouTube** >

 **Help Center** >


Скачать приложение Medit Link

Здесь вы можете скачать последнюю версию установщика программы из интернета. Это может быть полезно, если вы потеряли установщик, поставляемый с продуктом, или ваш установщик устарел.


53

Внимание

Если у вас есть подключение к интернету Medit Link обновляется автоматически.

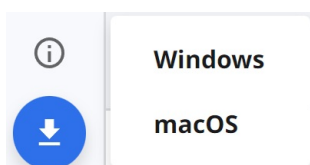

Обзор

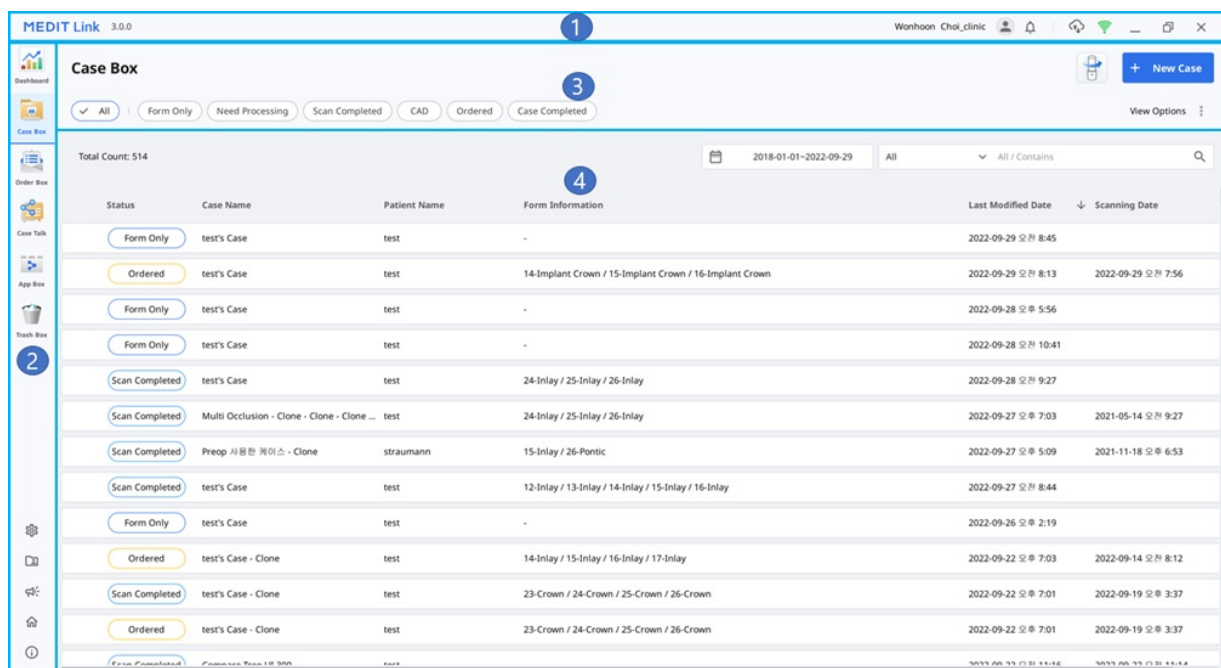

1	Строка заголовка	Подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Строка заголовка .
2	Меню	Подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Меню .
3	Инструменты и функции	Подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Просмотрщик файлов и Приложение Medit Link > Параметры просмотра .
4	Список проектов	Подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Фильтрация и поиск .

Обзор разделов

Рабочий процесс		Учетная запись клиники	Учетная запись лаборатории
Шаг 1	Создание проектов	Case Box: Создавайте проекты и с легкостью осуществляйте поиск и просмотр проектов благодаря различным параметрам фильтрации и поиска. С помощью созданного проекта вы можете напрямую подключаться к программам сканирования и CAD-программам для работы с ними.	


Шаг 2	Заказ/управление проектами	Order Box: Управление заказанными проектами. Функции для управления процессом от оформления заказа до завершения проекта.	In Box: Управление проектами по полученным заказам. Функции для управления процессом принятия, отклонения, доставки и завершения проектов.
Шаг 3	Работа по сканированию/CAD		Work Box: Управление проектами, которые были переадресованы из In Box или созданы вами. Вы можете напрямую подключаться к программам сканирования и CAD-программам для работы с ними.
Шаг 4	Совместное использование проектов	Case Talk: Делитесь созданными проектами с ограничениями, без ограничений, с определенными людьми или другими зарегистрированными пользователями Medit Link.	
Шаг 5	Дополнительная или вспомогательная работа	App Box: Используйте различные приложения, дополняющие рабочий процесс цифровой стоматологии. Вы можете скачать и установить программы Medit или сторонние приложения.	
Шаг 6	Удалить/восстановить проекты	Trash Box: Просмотр, восстановление или безвозвратное удаление проектов из Trash Box.	

В приведенной ниже таблице показано, какие разделы доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.

Тип учётной записи		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Учетная запись клиники	Администратор	○	○	Х	Х	○	○	○
	Пользователь	○	Х	Х	Х	○	○ * Только функция восстановления	○
Учетная запись лаборатории	Администратор	Х	Х	○	○	○	○	○
	Пользователь	Х	Х	Х	○	○	○ * Только функция восстановления	○

Строка заголовка

Строка заголовка обеспечивает быстрый доступ к таким функциям, как статус сетевого соединения, облачная синхронизация и уведомления.

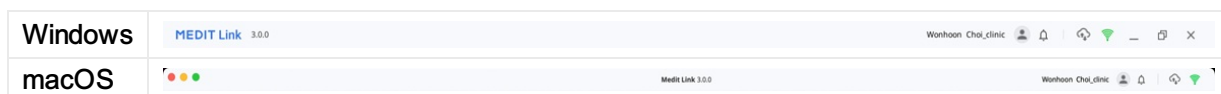

Моя информация

Раздел «Моя информация» содержит основную информацию о пользователе, такую как изображение профиля, название организации, адрес электронной почты и имя пользователя.

Он также предоставляет возможность выхода из системы и ярлык для перехода на страницу «Моя учетная запись» в веб-сервисе Medit Link.

1	Изображение профиля.
2	Название организации, адрес электронной почты и имя пользователя.
3	Выход из текущей учетной записи.
4	Переход в веб-сервис Medit Link с данными текущей учетной записи. Вы можете просматривать, редактировать и управлять информацией учетной записи, введенной при регистрации.

Уведомления

Показывает уведомления, связанные с контрактами, заказами и рабочим процессом.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20 *

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05 *

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05 *

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05 *

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33 *

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15 *

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Установите флажок, чтобы отображались только непрочитанные сообщения. |
| 2 | Щелкните любое уведомление, чтобы мгновенно перейти к соответствующему проекту или веб-странице. |

Диспетчер синхронизации проектов

Диспетчер синхронизации проектов помогает загружать и скачивать проекты в Medit Link. Вы можете загрузить несколько проектов в облако или скачать их на свой локальный компьютер.

[illegible]

Загрузить

Общее количество проектов/выбранные проекты	Проверить все/выбранные проекты, которые необходимо загрузить.
Загрузить все	Загрузить все проекты в облако.
Отменить все	Отменить все запросы на загрузку.
	Загрузить проект в облако.
	Отменить загрузку проекта.
	Повторить попытку загрузки проекта.

Скачать

Общее количество проектов/выбранные проекты	Отметить все/выбранные проекты, которые необходимо скачать.
---	---

Скачать все	Скачать все проекты на компьютер.
Отменить все	Отменить все запросы на скачивание.
	Скачать проект на компьютер.
	Отменить скачивание проекта.
	Повторить попытку скачивания проекта.

Статус сетевого соединения

Medit Link позволяет беспрепятственно использовать все функции при подключении к сети.

Чтобы помочь вам проверить состояние сетевого подключения в режиме реального времени, в строке заголовка отображается значок состояния сети.

При неудовлетворительном сетевом подключении вы можете столкнуться со следующими ограничениями:

- Некоторые функции, такие как заказ и создание проектов, их совместное использование через Case Talk, а также облачная синхронизация могут быть ограничены.
- Общая производительность сервиса может быть снижена из-за влияния сетевой среды.

В этом случае вы можете перейти в офлайн-режим для выполнения базовых задач, а затем, после подключения к сети, использовать функции, которые требуют интернет-соединения.

Внимание

Символ сети указывает на скорость отклика между текущей областью и AWS (веб-сервисом Amazon). Он не отображает скорость вашей сети. Иногда он может отображать статус как неудовлетворительный, даже если скорость вашей сети достаточно высока.


Если для других процессов используется та же сеть, скорость сети может быть низкой, и общая производительность Medit Link также может быть снижена. В этом случае, пожалуйста, не используйте сеть совместно с другими процессами.

Например, функция «Загрузить необработанные данные» занимает огромную часть сетевого процесса. Если значок отображает статус, как неудовлетворительный, перейдите в Настройки > Загрузить необработанные данные и отключите функцию «Автоматическая загрузка».

Меню

Dashborad


Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, проделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

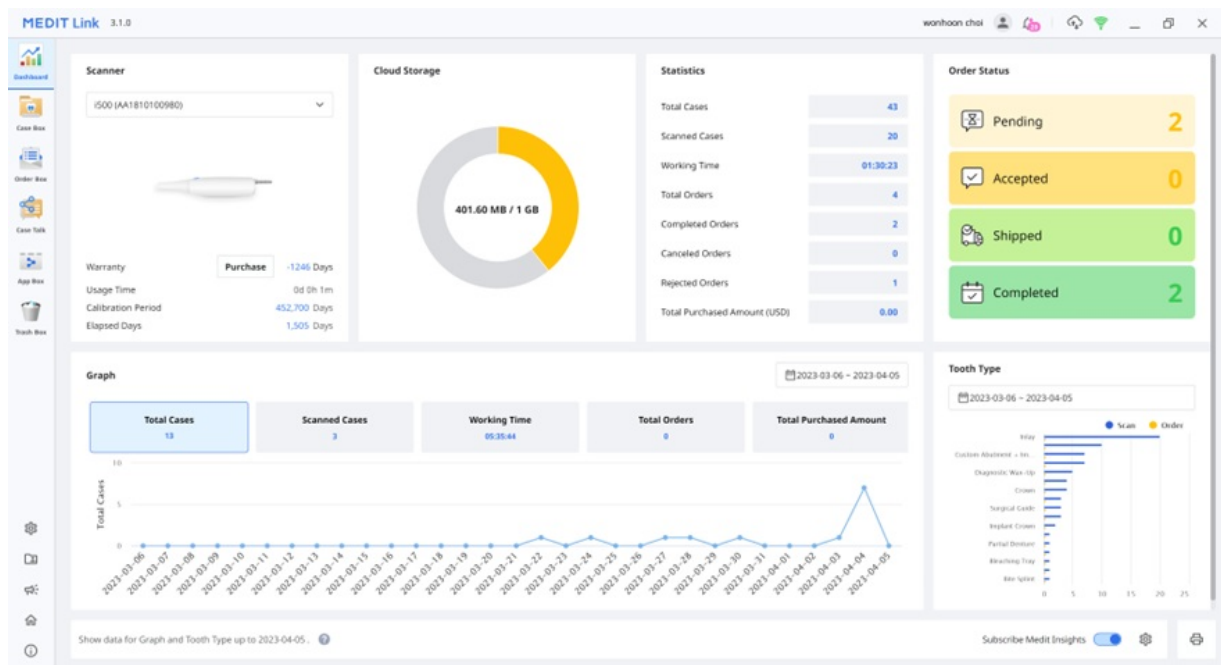

Внимание

Дополнительную информацию об использовании Dashboard и Medit Insights смотрите в разделе [Веб-сервис Medit Link > Dashboard](#).

Case Box/Work Box

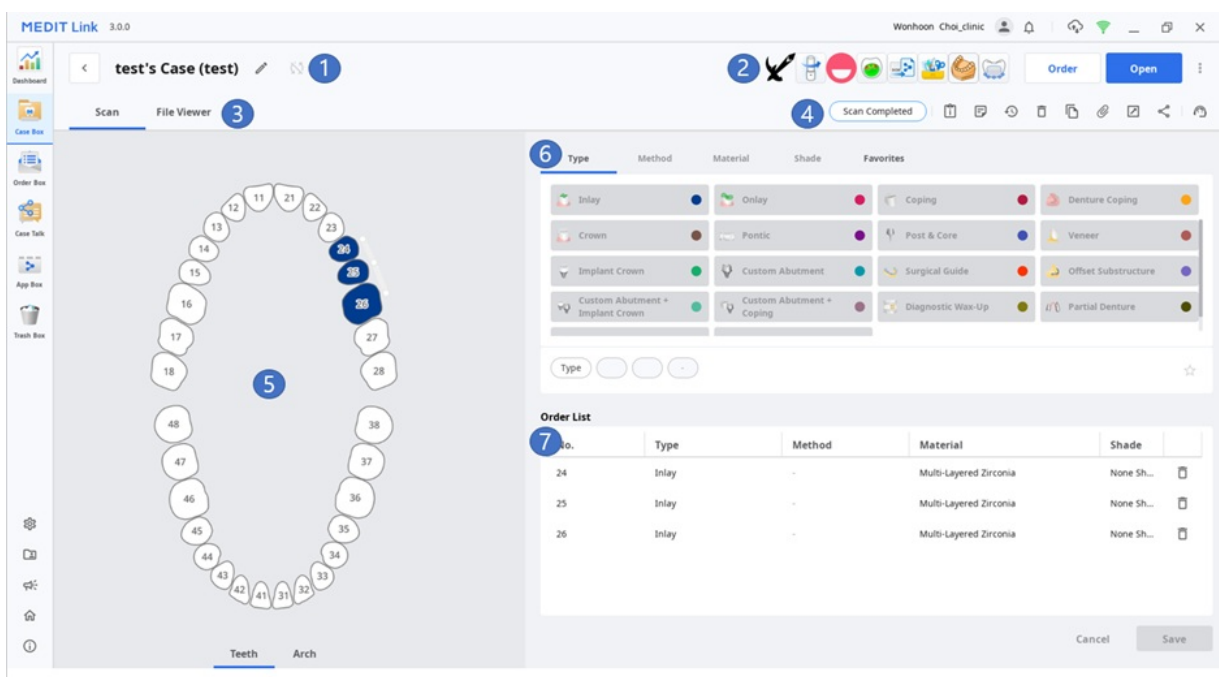

1	Название проекта и имя пациента.
2	Основные доступные функции: кнопки «Заказ/Сканировать (Открыть)/Заказ» и значки приложений.
3	Доступные вкладки: «Форма», «CAD» и «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами.
5	Пользовательский интерфейс регистрации формы для выбранной программы CAD.
6	Выбор информации о типе/методе/материале/оттенке для выбранного номера зуба.
7	Информация о типе/методе/материале/оттенке, примененных к выбранным зубам.

Вкладки в Case Box/Work Box

Форма	CAD	Просмотрщик файлов
Вкладка «Форма» предоставляет пользовательский интерфейс для ввода основной информации для сканирования, такой как тип, метод, материал для номеров зубов, и параметров сканирования. Введенная вами информация передается в подключенную программу сканирования и используется в качестве информации о заказе при размещении заказа у вашего партнера.	Вкладка «CAD» предоставляет пользовательский интерфейс для установки параметров CAD. Настроенная вами информация передается в подключенную программу CAD.	Просмотр файлов результатов, созданных программами сканирования и CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Функции в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие функции:


Статус проекта	Показывает статус проекта.
----------------	----------------------------

	Перейти к деталям	Предоставляет ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.								
	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.								
	История проекта	Предоставляет подробную информацию об истории проекта. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr>	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									

Close

	Удалить	Удаляет проект. Нельзя удалять заказанные проекты или проекты, созданные в офлайн-режиме.
	Клонировать	Создает дубликат текущего проекта в Case Box. Все данные будут скопированы в клонированный проект. Эта функция помогает реплицировать информацию о лечении для того же пациента или сделать дополнительный заказ с той же информацией или файлами.
	Прикрепить	Прикрепляет файлы различных форматов.
	Экспортировать	Экспортирует файлы результатов сканирования или CAD на локальный ПК. При экспорте файлов можно выбрать предпочтительный формат. Экспортированные файлы можно использовать для дальнейшей работы в программах CAD и CAM.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. Пользователи с общей ссылкой могут получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ. Свободно делитесь ссылкой со всеми или только с определенными людьми. Для защиты личной информации можно установить ПИН-код или срок действия ссылки.
	Отправить заявку в поддержку	Переводит на страницу Справочного центра Medit для отправки запроса в службу поддержки.

Order Box/In Box

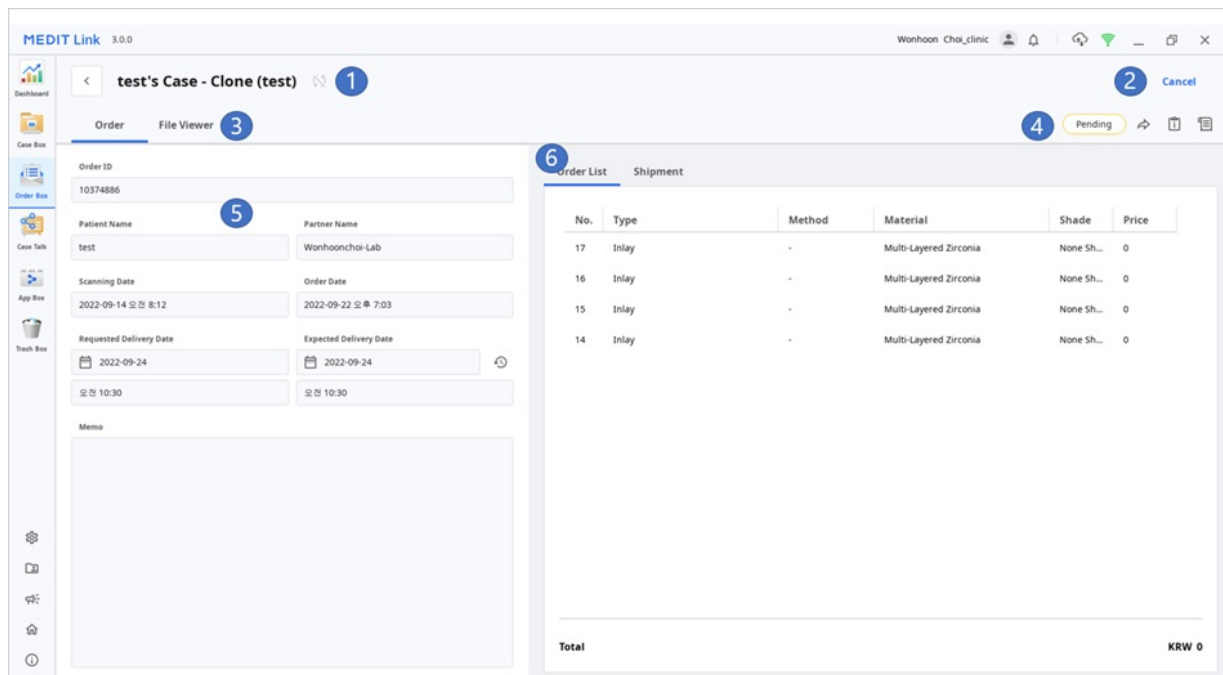

- 1 Название проекта и имя пациента.
- 2 Функции для управления заказом (прием/отмена; доставка/получение).
- 3 Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов».
- 4 Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п.
- 5 Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги.
- 6 Информация о заказанном продукте и статусе доставки.

Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация, относящаяся к заказу, такая как номер заказа, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

Внимание

Для использования Case Talk требуется интернет-соединение.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Talk

2018-01-01 ~ 2022-09-29 Case Talk Name Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanning Date	Shared Date ↓	Expiration Date
test's Case-262 - Clone_2022-08-05 18:00:05	test	14, 15, 16, 17	2022-07-28 08:27	2022-08-05 18:00	2022-11-03 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:09	2022-10-23 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:02	2022-10-23 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:58:18	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:58	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:57:54	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:57	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:56:47	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:56	2022-10-19 23:59
test1's Case_2022-07-14 14:45:16	test1	Maxilla	2022-07-06 10:36	2022-07-14 14:45	2022-10-12 23:59

Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.

App Box

App Box содержит различные программы, которые дополняют ваш основной рабочий процесс сканирования и повышают производительность.

Medit Apps включает в себя оригинальное программное обеспечение, разработанное Medit, и приложения для интеграции с нашими партнерами из различных секторов цифровой стоматологии, таких как 3D-печать, другое программное обеспечение CAD/CAM и т. п.

Загрузите доступные приложения из Medit Apps и Partners App для создания стоматологических аппаратов, анализа данных сканирования, помощи во время консультаций или оптимизации вашего рабочего процесса.

MEDIT Link 3.1.0 wonhoon choi

App Box

Search by App Information

All Apps All Categories

Medit Occlusion Analyzer
Analysis Tool
By MEDIT v 1.0.1.72 2023-03-28
Total Downloads 61 [Update](#)

Medit Margin Lines
Tool CAD
By MEDIT v 1.0.0.23 2022-12-08
Total Downloads 21 [Installed](#)

Medit Model Builder
Tool CAD
By MEDIT v 1.3.1.53 2023-03-16
Total Downloads 295 [Update](#)

Medit Design (Formerly Known as Medit Compare)
Tool
By Medit R&D v 2.1.2.76 2022-12-20
Total Downloads 463 [Installed](#)

Medit Splints
Tool
By Medit R&D v 1.0.3.127 2022-12-20
Total Downloads 155 [Installed](#)

Medit Ortho Simulation
Tool
By Medit R&D v 1.3.0.22 2022-12-08
Total Downloads 291 [Installed](#)

fastscan.io Integration
Tool
By Medit R&D v 1.0.1.0 2022-12-06

DentbirdCrown Integration
CAD
By Imageworks Inc. v 1.2.9.0 2022-11-22

Medit Temporaries
CAD
By Medit R&D v 1.1.2.113 2022-11-16

Medit Academy
Get started with our online education and become a Medit Expert

MEDIT
[Learn more](#)

Medit Help Center
Need any help? Check out our Medit Help Center, now available in 10 different languages! [Learn more](#)


MEDIT Help Center

Trash Box

Trash Box временно хранит удаленные проекты. Любой проект в Trash Box может быть либо восстановлен, либо безвозвратно удален.

⚠ Предостережение

Данные, удаленные из Trash Box, будут безвозвратно удалены с вашего компьютера и сервера и не могут быть восстановлены.

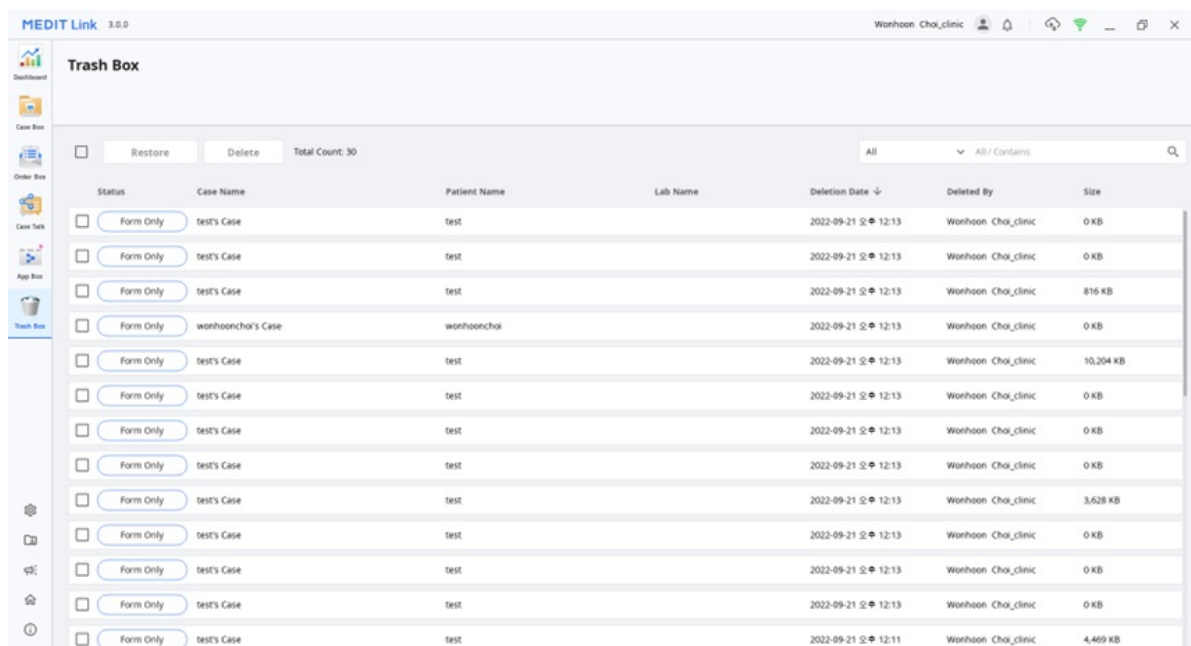


Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cha_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Cha_clinic	4,469 KB

Настройки

Для получения подробной информации об окне настроек смотрите [Приложение Medit Link > Настройки](#).

Ведение пациентов

Окно «Ведение пациентов» предоставляет возможность добавлять, редактировать, удалять и объединять данные пациентов.

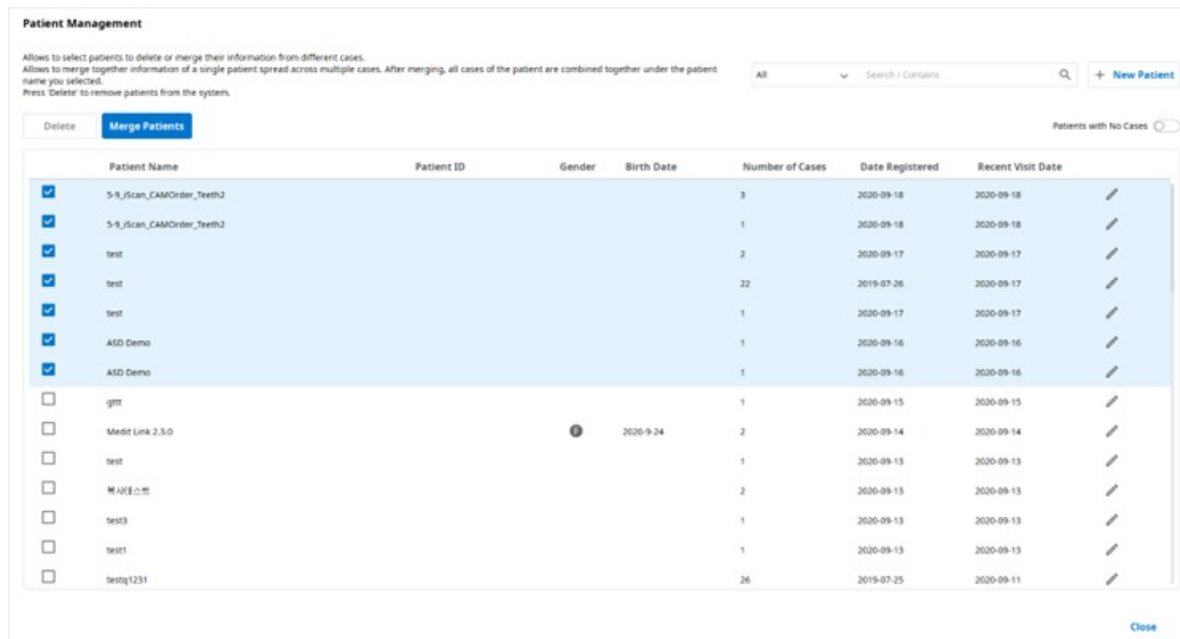

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒ 5-9_scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18
☒ 5-9_scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18
☒ test				2	2020-09-17	2020-09-17
☒ test				22	2019-07-26	2020-09-17
☒ test				1	2020-09-17	2020-09-17
☒ ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
☒ ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
☐ gntt				1	2020-09-15	2020-09-15
☐ Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14
☐ test				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ test3				2	2020-09-13	2020-09-13
☐ test3				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ test1				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11

Добавление нового пациента

1. Нажмите «Новый пациент».

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Заполните необходимую информацию в диалоговом окне «Новый пациент», затем нажмите «Сохранить».

Удаление пациента

Внимание

Вы можете удалить пациента только в том случае, если по нему нет проектов.

1. Выберите пациента для удаления из списка.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I Abutment?				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	salajadid				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Нажмите «Удалить».

Объединение пациентов

Вы можете объединить все проекты нескольких пациентов, объединив их под именем одного пациента.

1. Выберите пациентов, которых вы хотите объединить, из списка.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

Search / Contains

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	gnt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq(23)				26	2019-07-26	2020-09-11	

2. Нажмите «Объединить пациентов».
3. Выберите целевого пациента, под именем которого вы хотите объединить все проекты.
4. Все проекты объединяются под именем целевого пациента, и информация о целевом пациенте сохраняется.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

5. Нажмите «Применить», чтобы завершить объединение.

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Перейти на веб-сайт Medit Link

Переход к веб-сервису Medit Link под той учетной записью, с которой вы в данный момент вошли в систему.

Информация Medit

Здесь вы можете получить различную информацию об использовании Medit Link. Получите доступ к образовательным и информационным ресурсам Medit, таким как Medit Academy, канал Medit Academy на YouTube и Справочный центр Medit.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



Настройки

Общие настройки

Содержит параметры для общей настройки системы.

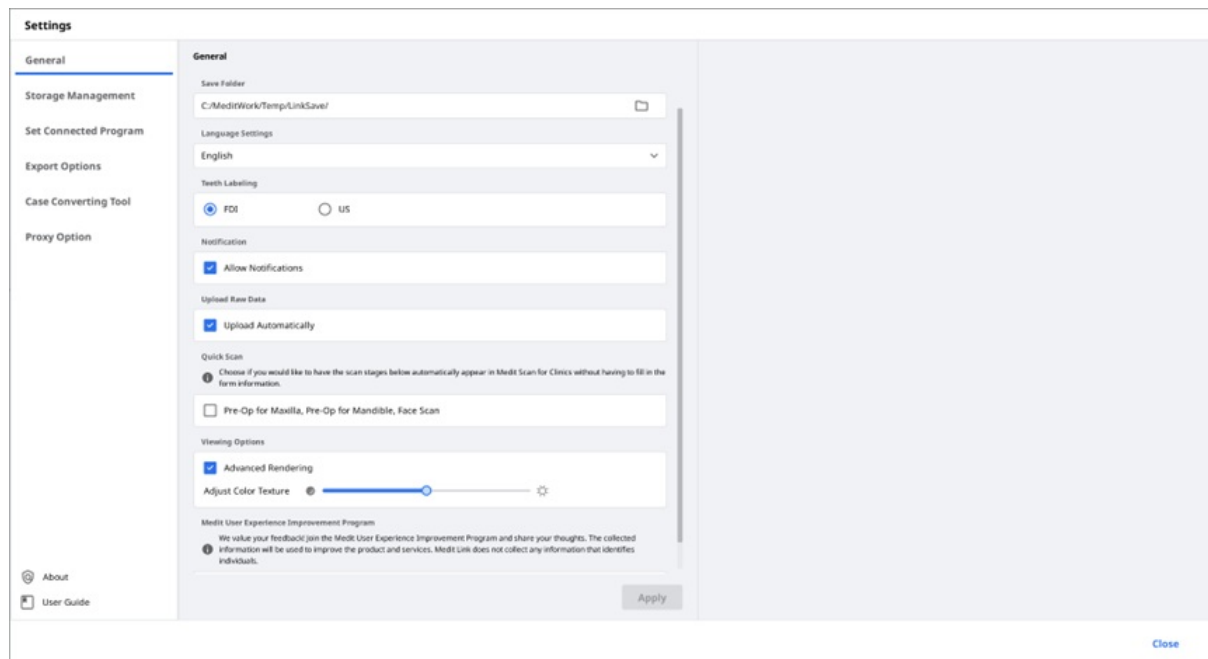

Папка для сохранения	Задайте папку для хранения результатов данных, созданных в Medit Link и подключенных программах.	
Настройки языка	Выберите язык программы.	
Маркировка зубов	Выберите систему маркировки зубов между FDI и US.	
Уведомления	Если отмечена эта функция, вы будете получать уведомления об обновлениях программы.	
Загрузить необработанные данные	Если отмечена эта функция, необработанные данные автоматически загружаются в облако. Это помогает создавать резервные копии исходных данных и выполнять бесшовное сканирование при использовании Medit Link с той же учетной записью на другом ПК. Резервное копирование исходных данных в облаке применяется только к данным, полученным в Medit Scan for Clinics.	
Быстрое сканирование	Выберите, хотите ли вы, чтобы указанные ниже этапы сканирования автоматически отображались в Medit Scan for Clinics без необходимости заполнения информации формы. • Предоперационная верхняя челюсть • Предоперационная нижняя челюсть • Сканирование лица	
Параметры просмотра	Расширенный рендеринг	Если отмечена эта функция, 3D-модель отображается более ярко и реалистично.
	Настроить цвет текстуры	Отрегулируйте яркость 3D-модели.
		* Результирующие цвета могут незначительно отличаться от цвета в Medit Link, когда вы открываете те же данные с помощью другого программного обеспечения.


Программа улучшения пользовательского опыта Medit

Присоединяйтесь к программе улучшения пользовательского опыта Medit.

- Мы используем собранную информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
- Мы не собираем какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать отдельных лиц.

Управление хранилищем

Просмотр и управление локальным и облачным хранилищами.

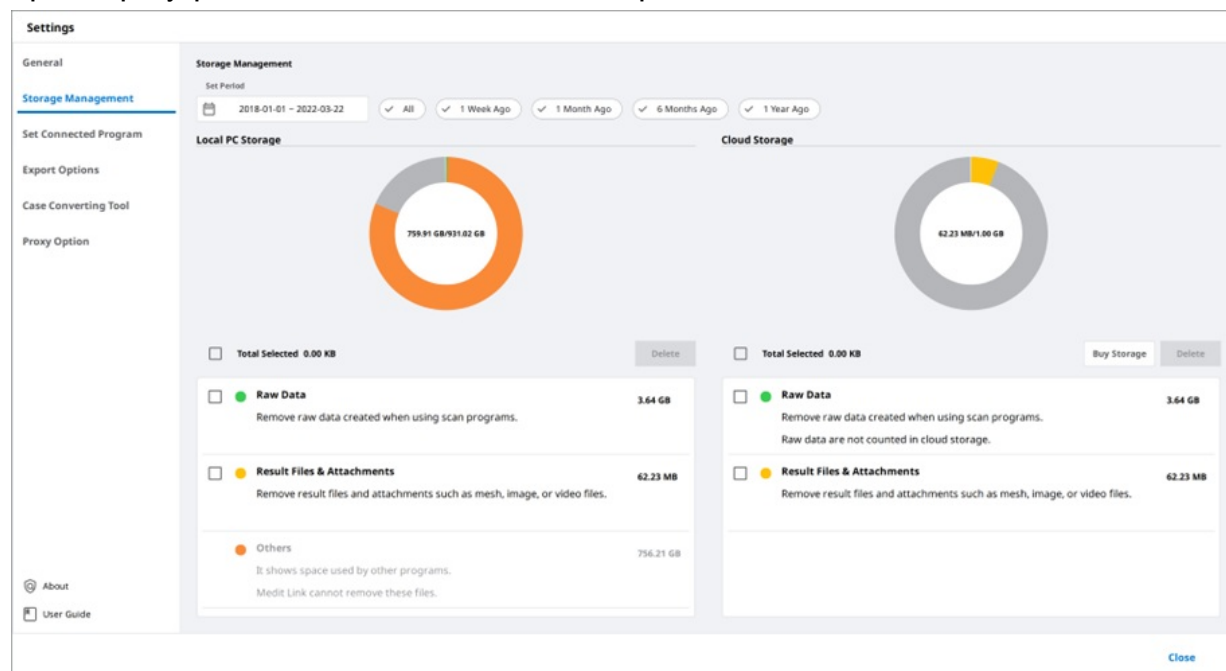

Установить период

Установите конкретный период для удаления данных, созданных в течение указанного ниже периода времени.

- Все: показывает все файлы.
- 1 неделю назад: показывает файлы, с момента создания которых прошла 1 неделя.
- 1 месяц назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 месяц.
- 6 месяцев назад: показывает файлы, с момента создания которых прошло 6 месяцев.
- 1 год назад: показывает файлы, с момента создания которых прошел 1 год.

Локальное хранилище

Управление дисковым пространством ПК.

Необработанные данные	Удаляет выбранные необработанные данные с ПК. Если необработанные данные уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Результаты и вложения	Удаляет с ПК файлы результатов и вложений, такие как сетка, изображения и видео. Если эти файлы уже загружены в облако, вы можете скачать их и использовать в любое время.
Прочее	Показывает файлы, используемые для работы системы и других программ. Отображает объем памяти вашего ПК. Вы не можете удалить эти файлы из Medit Link.

Удалить	Удаляет выбранные файлы с ПК.
---------	-------------------------------


Облачное хранилище

Управление облачным хранилищем.

Необработанные данные	Необработанные данные не занимают место в облачном хранилище, поэтому их не будет на круговой диаграмме. Однако, при необходимости, вы можете здесь управлять необработанными данными, например, удалить их для защиты личной информации пациента и т. п.
Результаты и вложения	Файлы результатов и вложений занимают место в облачном хранилище. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Купить место в хранилище	Если вы пользуетесь тарифным планом Standard, подпишитесь на тарифный план Premium, чтобы увеличить объем облачного хранилища.
Удалить	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Установить подключенную программу

Управляет программами, поддерживающими интеграцию в Medit Link.

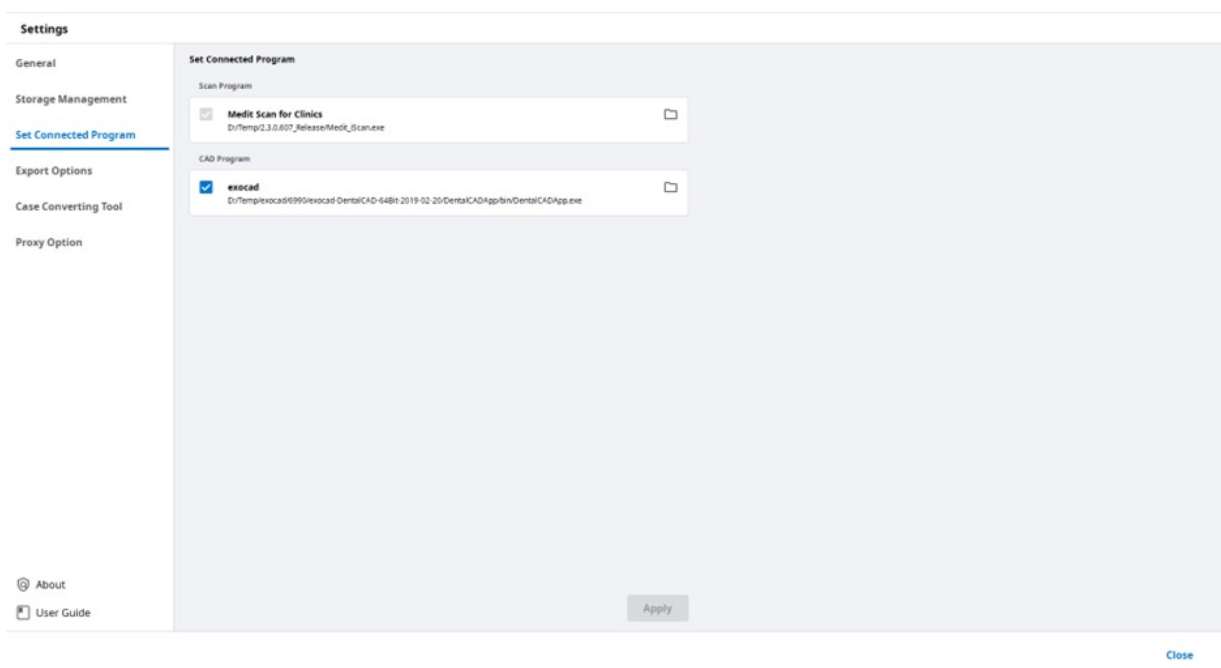

Вы можете установить следующие программы:

	Учетная запись клиники	Учетная запись лаборатории
Программа сканирования	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Программа CAD	exocad	exocad

Внимание

Следующие сервисы недоступны для Medit Link в macOS:

- Medit Scan for Labs
- exocad

Параметры экспорта

Установите, как экспортировать файлы из Medit Link.

Тип CAD	Выберите программу CAD, которую хотите использовать для проектирования. Программа скорректирует результаты на основе вашего выбора, что позволит вам продолжить проектирование без какого-либо дополнительного выравнивания осей.
Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения результатов.
Формат файла сетки	Укажите формат окончательного файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать и объединить	Сжать файлы: сжимает все результаты в один файл. Объединить файлы при экспорте: объединяет все результаты для верхней или нижней челюсти в один файл. При использовании некоторых программ, которые не могут импортировать несколько файлов и работать с ними, вы можете объединить их в один для работы в этих программах.
Варианты в случае, когда такая же папка или файл уже существуют.	Выберите действие по умолчанию для случаев, когда такое же имя папки или файла существует в целевом местоположении. • Всегда спрашивать при экспорте. • Экспортировать новый файл и перезаписать существующие файлы. Сохраненный в данный момент файл будет потерян. • Создайте папку и экспортируйте файлы.


Правило для имени папки	Определите правила для создания имени папки при экспорте файлов. Установленные правила будут применены к именованию папки, и экспортированный файл будет сохранен в созданной папке. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. - Учётная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа - Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа
Правило для имени файла	Определите правила для имени экспортируемого файла. Для установки правила можно использовать приведенную ниже информацию. - Учётная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа - Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа

Инструмент для преобразования проекта


Перемещает проекты между разными учетными записями.

Как использовать инструмент для преобразования проекта


1. Откройте Medit Link и нажмите кнопку «Настройки».

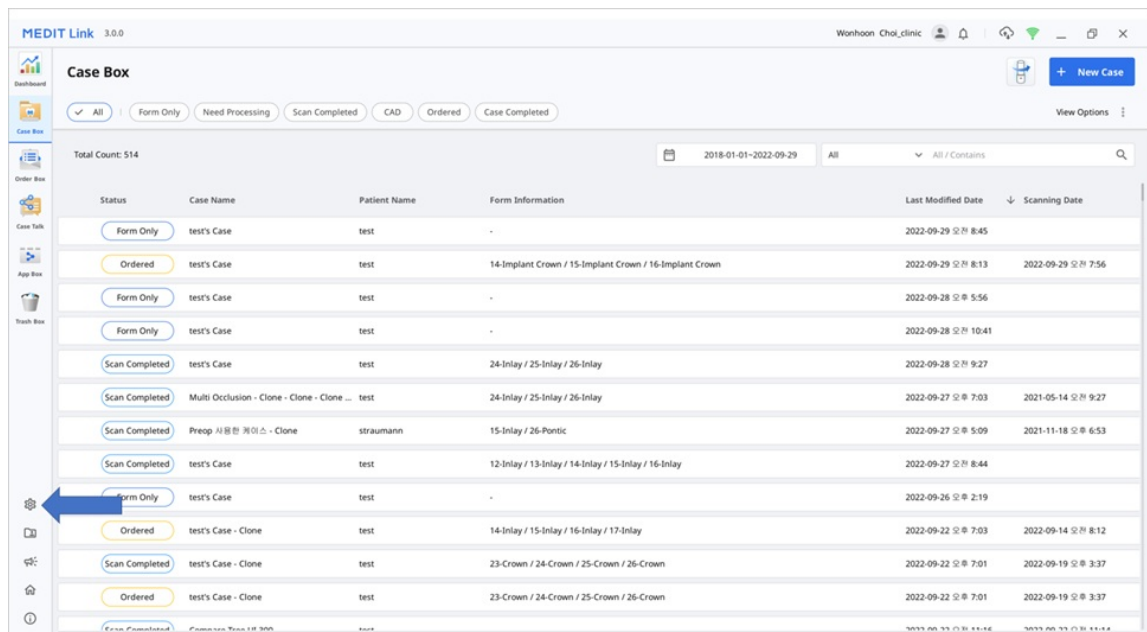

2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

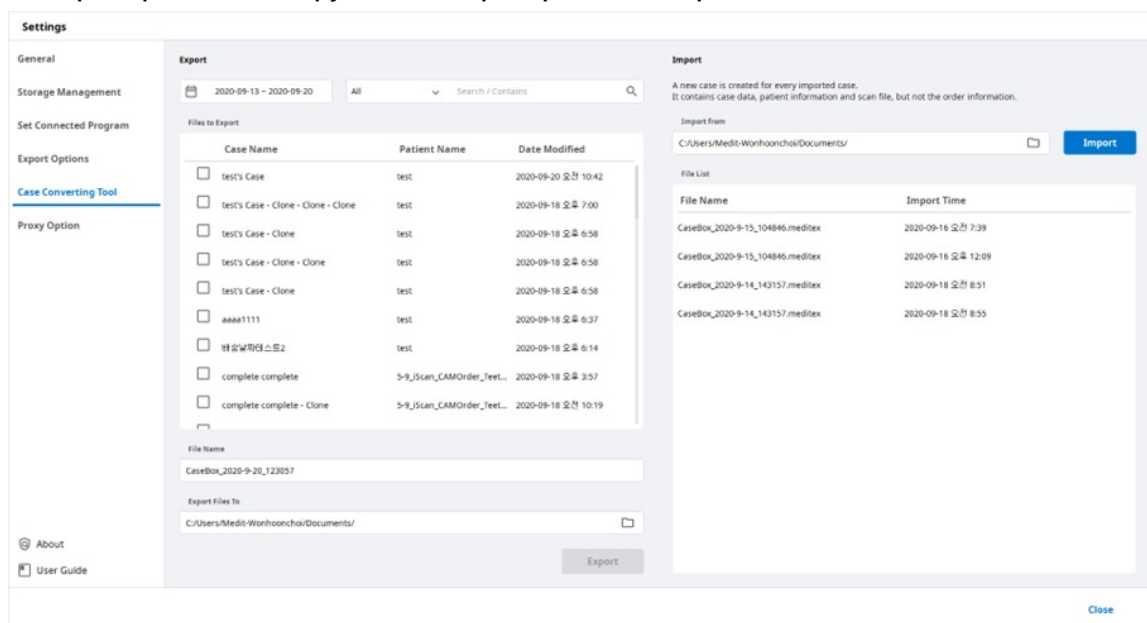


3. В секции «Импорт» нажмите на значок папки, чтобы найти на компьютере файл .meditex, который вы хотите импортировать.
4. Нажмите кнопку «Импортировать» и проверьте импортированный файл в списке файлов ниже.

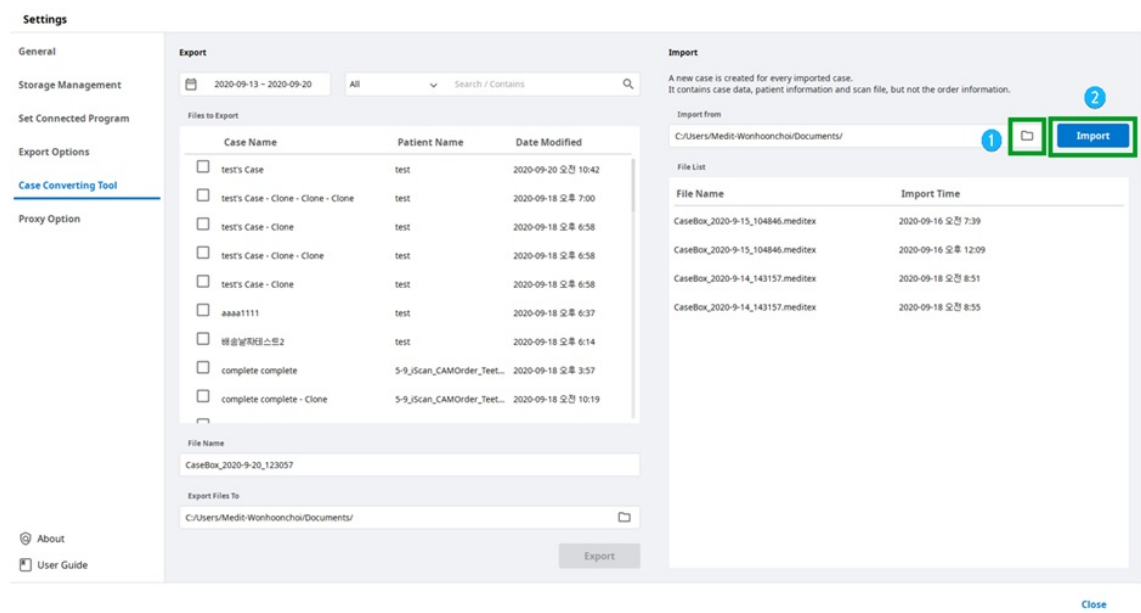

5. Импортированный проект также появится в вашем Case Box (учетная запись клиники) или Work Box (учетная запись лаборатории).


Параметры прокси

В некоторых ограниченных сетевых средах можно изменить сетевые настройки.

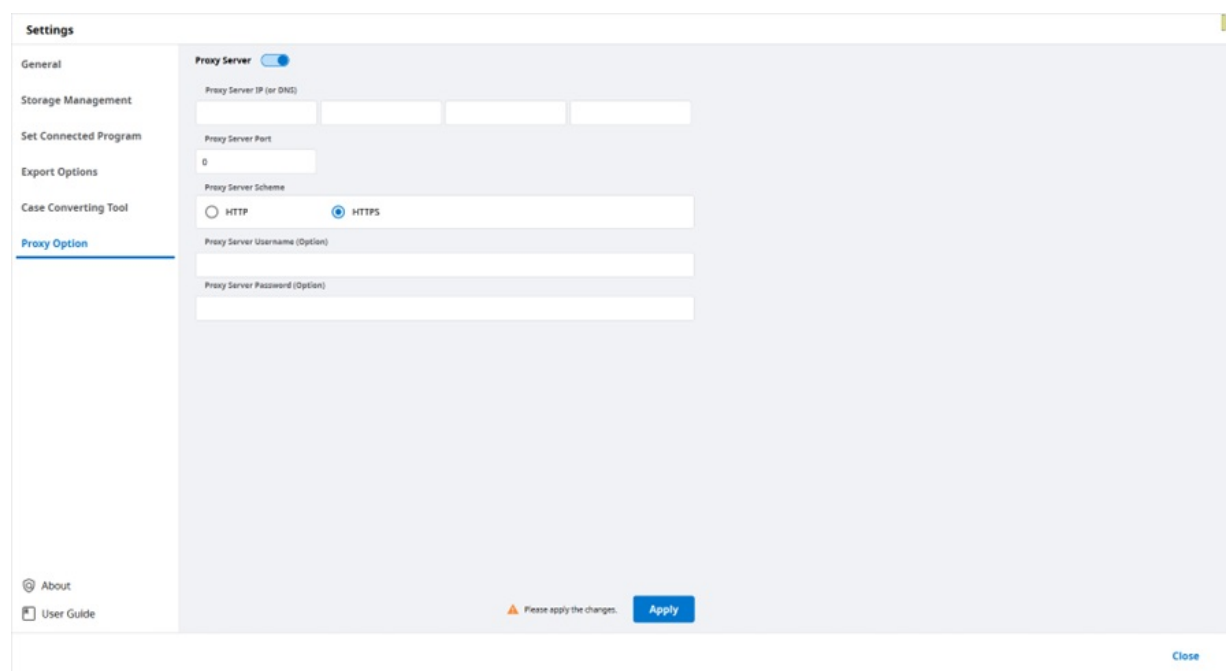

О программе

Показывает подробную информацию о Medit Link.

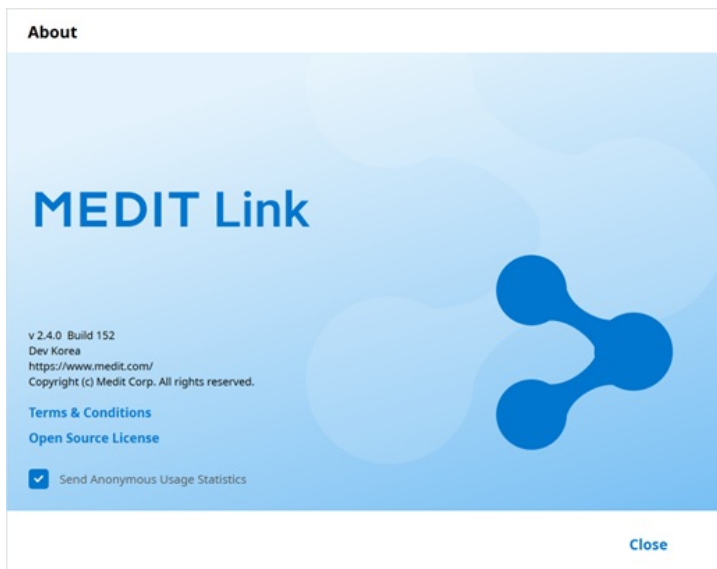

Руководство пользователя

Предоставляет руководство пользователя для Medit Link.

Для открытия руководства пользователя требуется подключение к интернету.

Просмотрщик файлов

Просмотрщик файлов группирует и отображает различные данные, включая данные, полученные из программ, связанных с Medit Link, и данные, прикрепленные пользователями.

Он обеспечивает основные функции управления, такие как просмотр/скрытие данных, настройка прозрачности и удаление данных.

Поддерживается предварительный просмотр файлов в следующих форматах:

- 3D-данные: STL, OBJ, PLY
- 2D-изображения: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Видеофайлы: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево данных

В дереве данных вы можете группировать и отображать все данные проекта. Кроме того здесь вы можете просматривать/скрывать данные, настраивать прозрачность и удалять данные из дерева данных.





	Показать/ скрыть	Позволяет показывать или скрывать данные.
	Непрозрачность	Ползунок появляется, когда в дереве данных вы нажимаете на какие-либо данные. Перемещая ползунок, вы можете настроить прозрачность отображаемых данных. 
	Дополнительно	Показывает доступные дополнительные функции.  • Показывать только это: скрывает все данные, кроме необходимых. • Скрыть: скрывает данные. • Дублировать: копирует данные и добавляет их в группу вложений. • Экспортировать: экспортирует выбранные файлы. • Переименовать: изменяет имя данных. • Удалить: удаляет данные.

Внимание

Вы можете переименовать данные в онлайн-режиме.

Инструменты управления моделью

Управление 3D-моделью

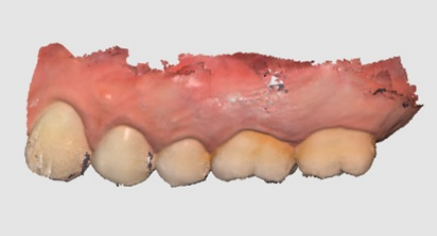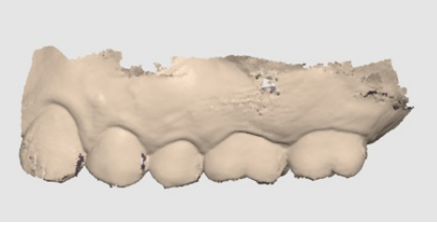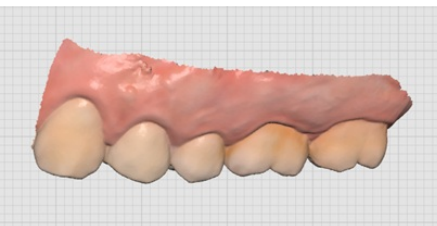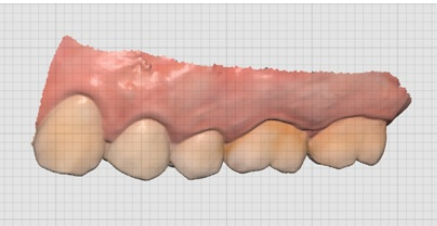	Панорамировать	Перемещает модель.
	Повернуть	Поворачивает модель.
	Увеличить/уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.
	Режим отображения модели	Текстура включена 
		Текстура выключена 
	Настройки сетки (mm)	Включить сетку 
		Включить наложение 
		Выключить сетку Скрывает сетку.

Управление 2D-изображением


	Следующее/предыдущее изображение	Позволяет перемещаться между изображениями.
	Редактировать	Редактирует изображение.
 	Закрепить/открепить окно	Позволяет отсоединить окно с изображением и переместить его в нужное положение. Вы можете изменить размер окна. После перемещения окна в исходное положение оно возвращается к размеру по умолчанию.

Функциональные инструменты

Захват изображений и заметки


Делайте захваченные изображения экрана в виде 2D-изображений, рисуйте на них или добавляйте примечания.

Вы можете сохранять их как файл вместе с вашими примечаниями и отправлять в качестве референсных данных.

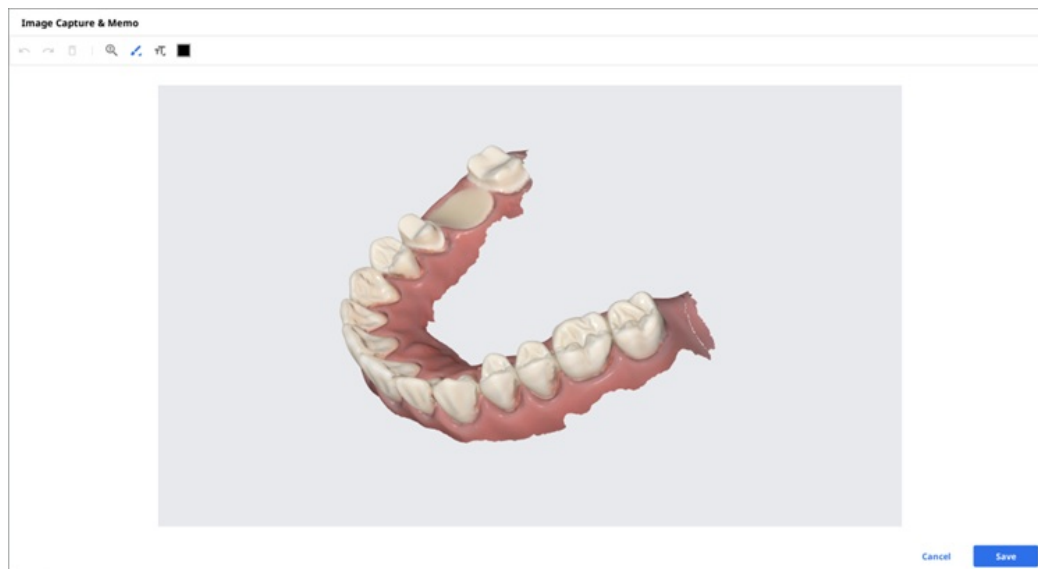

Ортодонтический захват


Делайте изображения в направлении просмотра, а также сверху/снизу/слева/справа от направления текущего просмотра.

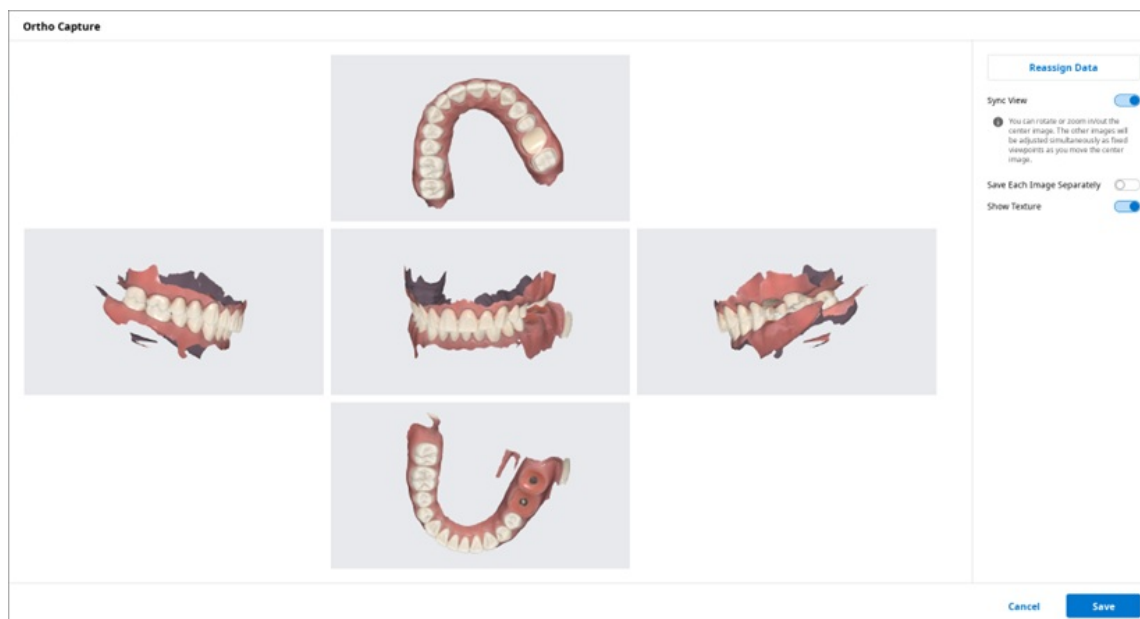

Синхронизация просмотра


Если эта функция включена, вы можете поворачивать или увеличивать/уменьшать центральное изображение. При его перемещении одновременно будут меняться и остальные изображения фиксированных точек обзора.

Когда эта функция выключена, вы можете панорамировать, поворачивать или увеличивать/уменьшать все изображения по отдельности.

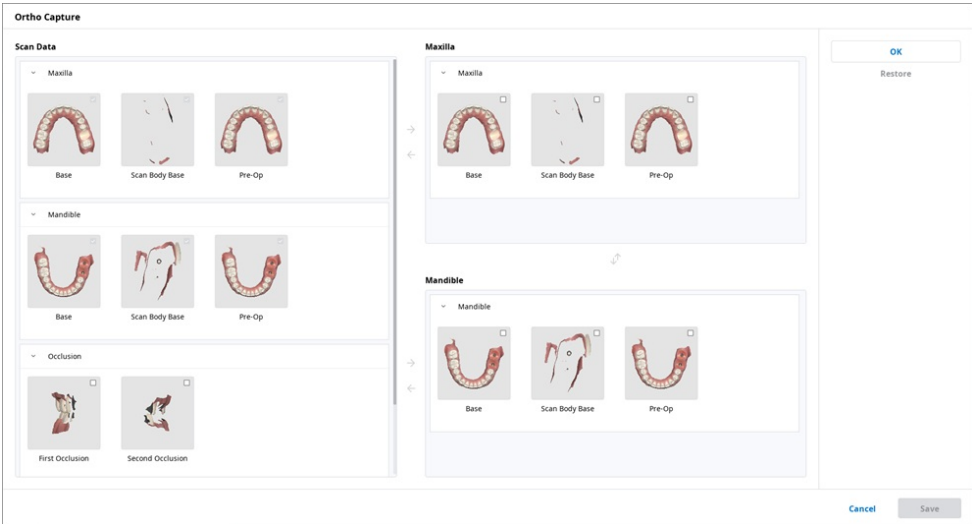Сохранить каждое изображение по отдельности	Сохраняет каждое изображение в высоком разрешении.
Показать текстуру	Включает/выключает текстуру модели.
Повторно назначить данные	С помощью функции «Повторно назначить данные» вы можете изменять данные верхней/нижней челюсти. Измененные данные можно использовать для создания и применения изображений результатов ортодонтического захвата.  • Данные сканирования: отображаются данные сканирования для проекта. • Верхняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для верхней челюсти. • Нижняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для нижней челюсти.


Заполнить дырки

Заполнение дырок в данных 3D-сетки.

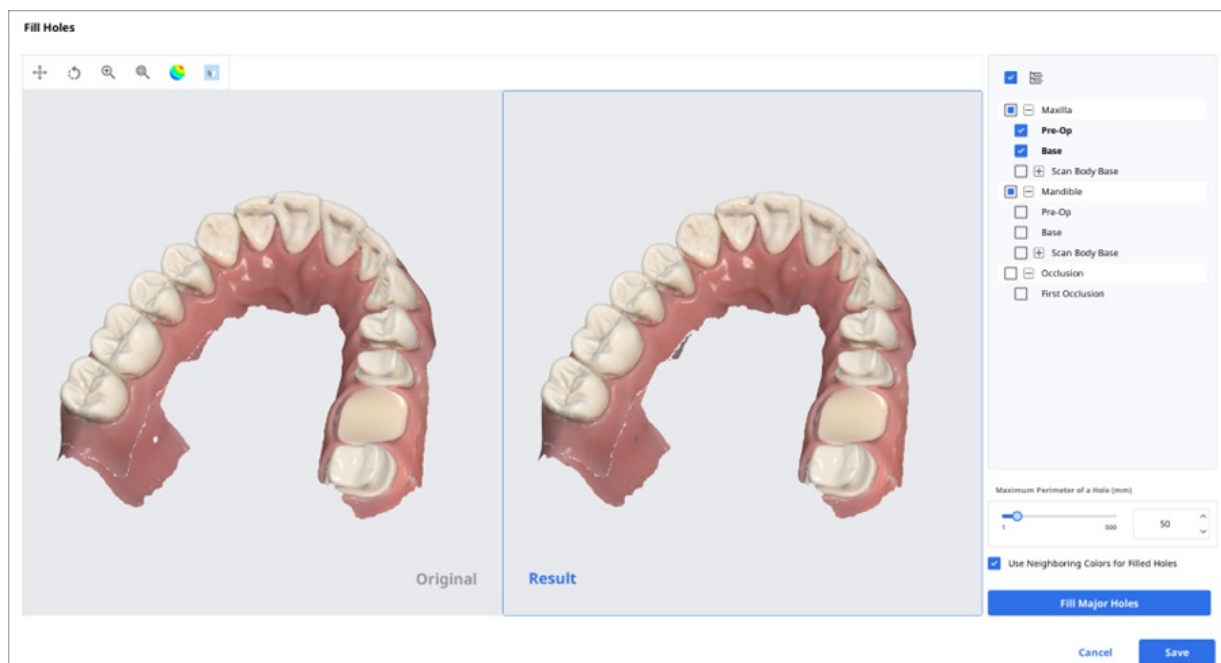

Обрезка

Функция обрезки предоставляет различные инструменты для редактирования данных.

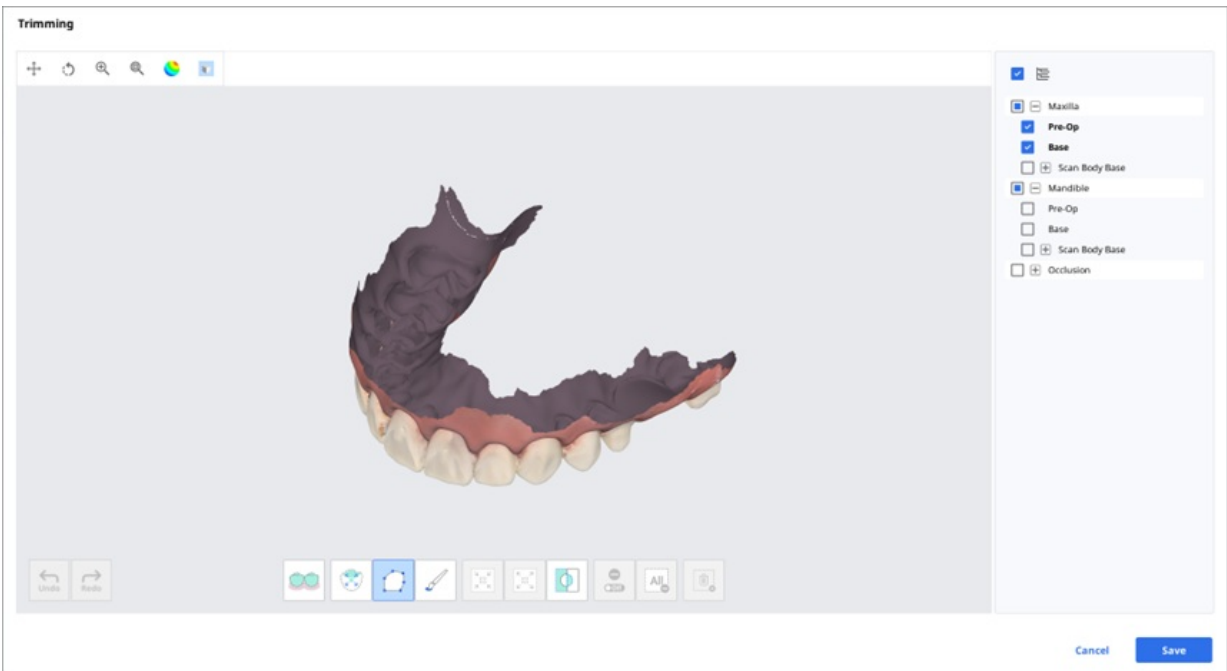


Выбранные данные 3D-сетки можно редактировать с помощью различных инструментов, расположенных в нижней части окна.

Выбор		Умный выбор области зубов	Автоматически выбирает все зубы дуги, исключая десну. Внимание Эта функция доступна только для тех данных сканирования, которые были получены в Medit Scan for Clinics с включенной опцией «Использовать GPU».
		Умный выбор области одного зуба	Автоматически выбирает область отдельного зуба, исключая десну. Щелкните, нажмите и перетащите мышью на зуб.
		Выбрать область полилинии	Выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране.
		Выбор кистью	Выбирает все объекты на начерченном от руки пути на экране. Будет выбрана только лицевая сторона. Кисть представлена в трех разных размерах.
Настройка выбранной области		Уменьшить выбранную область	Уменьшает выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Расширить выбранную область	Расширяет выбранную область при каждом нажатии на кнопку.
		Инвертировать выбранную область	Инвертирует выбранную область.
Отмена		Выбор/отмена выбора	При включении отменяет выбор области с помощью различных инструментов.

выбора		Очистить все выбранное	Очищает все выбранные области.
		Удалить выбранную область	Удаляет данные из выбранной области.

1. С помощью инструментов выбора области выберите область, которую хотите обрезать.

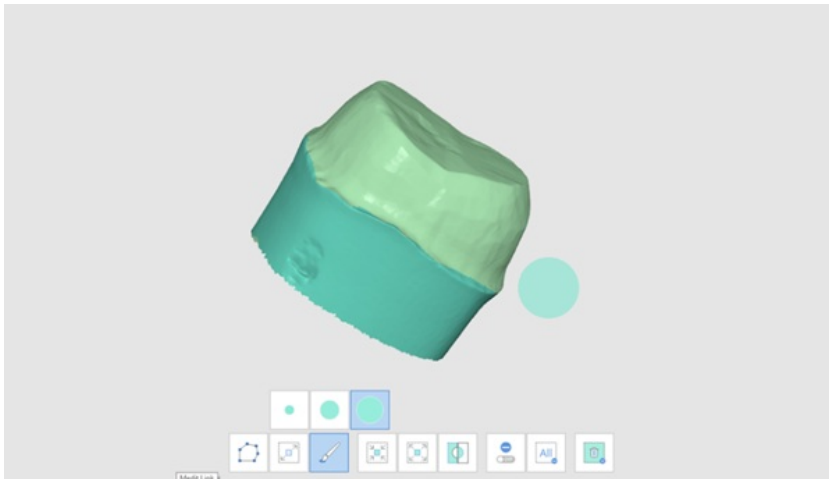


2. **Внимание**


Инструмент «Обрезка полилинии» выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране, в то время как инструмент «Обрезка кистью» выбирает данные только лицевой стороны.

3. Вы можете инвертировать, уменьшать или расширять выбранную область с помощью трех следующих инструментов:


- Инвертировать выбранную область

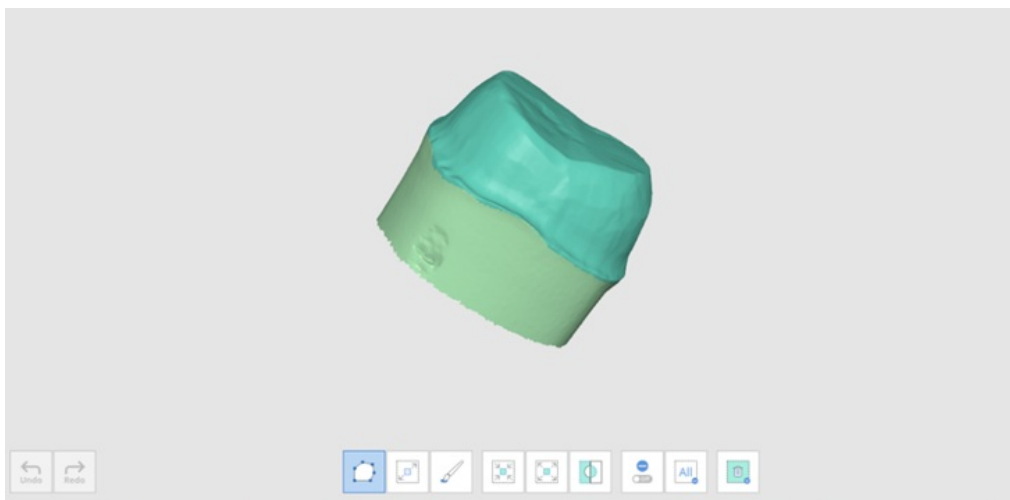

- Уменьшить выбранную область

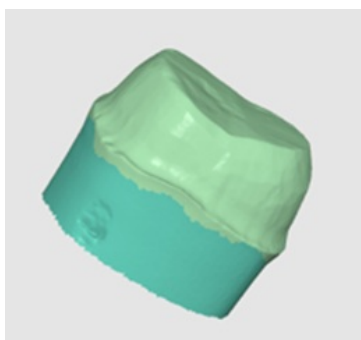


- Расширить выбранную область

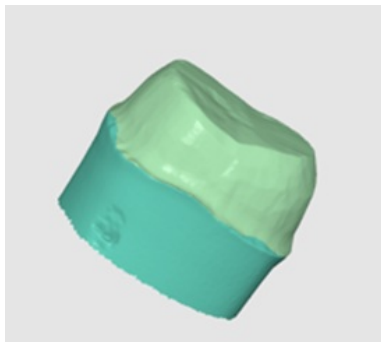

4. Отменить выделение выбранных областей можно с помощью инструмента «Удалить выбранную область».




Оптимизация сопоставления окклюзии

Оптимизируйте сопоставление окклюзии. Вы можете выбрать целевые данные и настроить сопоставление окклюзии.

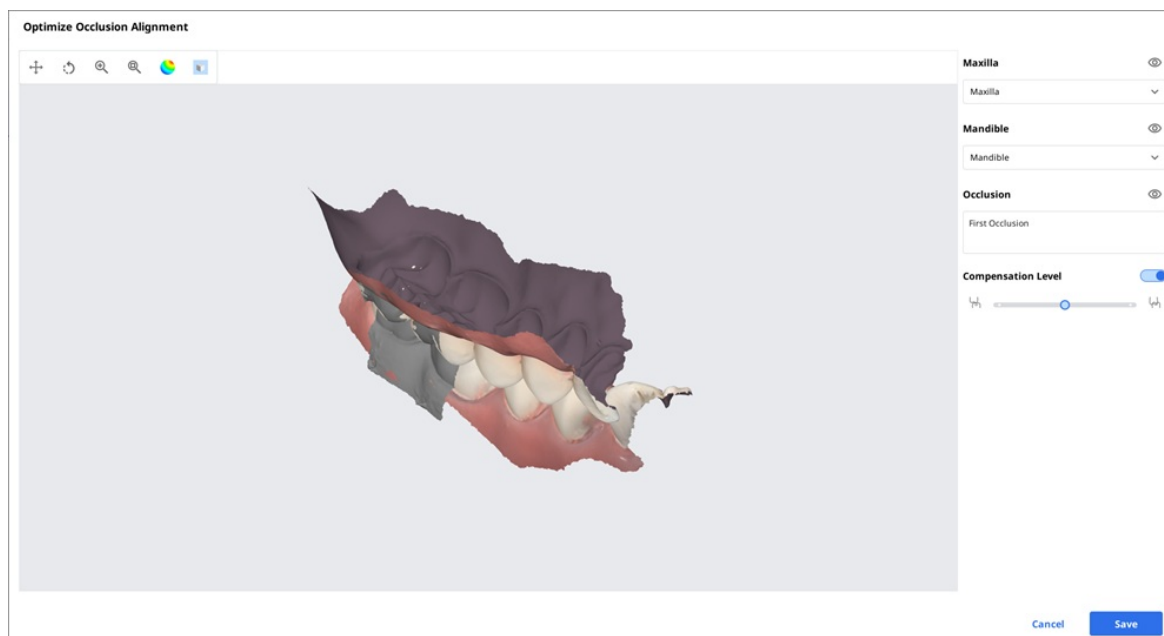


Уровень компенсации

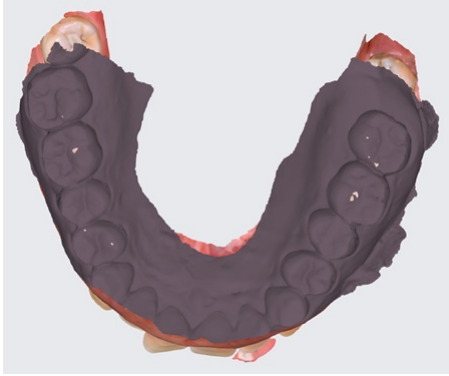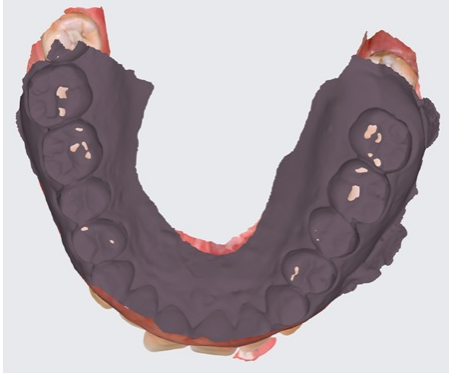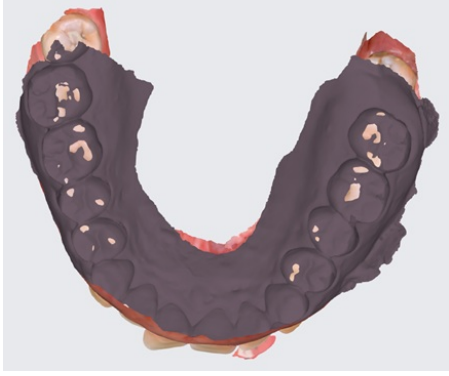

Средний	Compensation Level 	
Высокий	Compensation Level 	
Выключен	Compensation Level 	

Движение нижней челюсти

Вы можете воспроизвести движения нижней челюсти, записанные в Medit Scan for Clinics, чтобы увидеть динамические окклюзионные контакты между верхним и нижним зубными рядами.

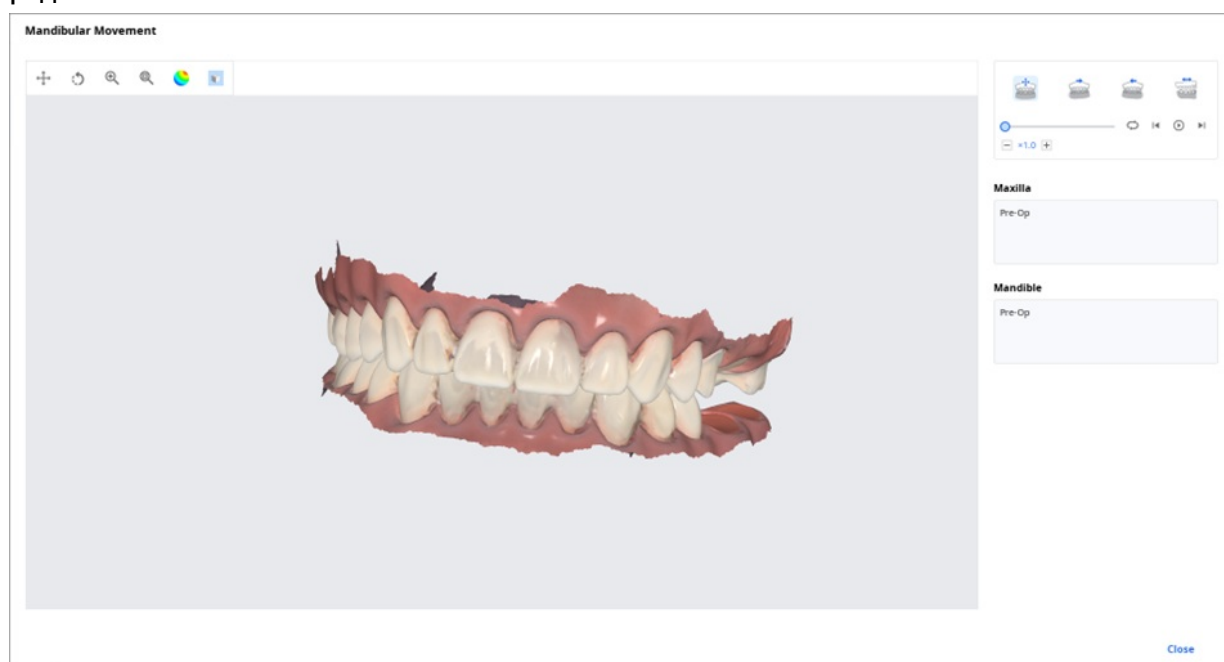

	Свободное движение	Воспроизводит запись свободного движения нижней челюсти.
	Левое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти влево.
	Правое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вправо.
	Протрузионное движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вперед.

Управление данными множественной окклюзии в просмотрщике файлов

Вы можете получить несколько результатов данных окклюзии из приложений для сканирования Medit.

Управлять этими результатами можно, используя предоставляемый Medit Link просмотрщик файлов.

Как управлять несколькими результатами


При получении нескольких результатов окклюзии от Medit Scan for Clinics Medit Link предоставляет возможность выбора результата.

Список результатов упорядочен по имени, и вы можете выбрать один из элементов.

Выбранная модель будет показана в Дереве данных и Области отображения модели.



Свернуть список и изменить элемент можно, используя значки со стрелками.

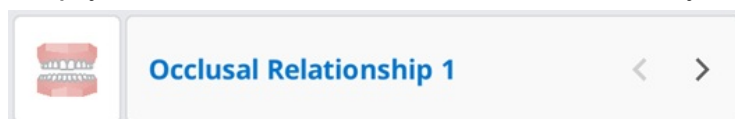

Параметры просмотра

Вы можете изменять параметры просмотра, чтобы настроить компоновку списка проектов в Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Фильтры статуса

Функция, которая позволяет показать или скрыть каждый фильтр, отражающий статус проекта. Скрытые фильтры статуса не отображаются на экране в Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

С помощью отображенных фильтров вы с легкостью сможете найти нужный вам проект.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

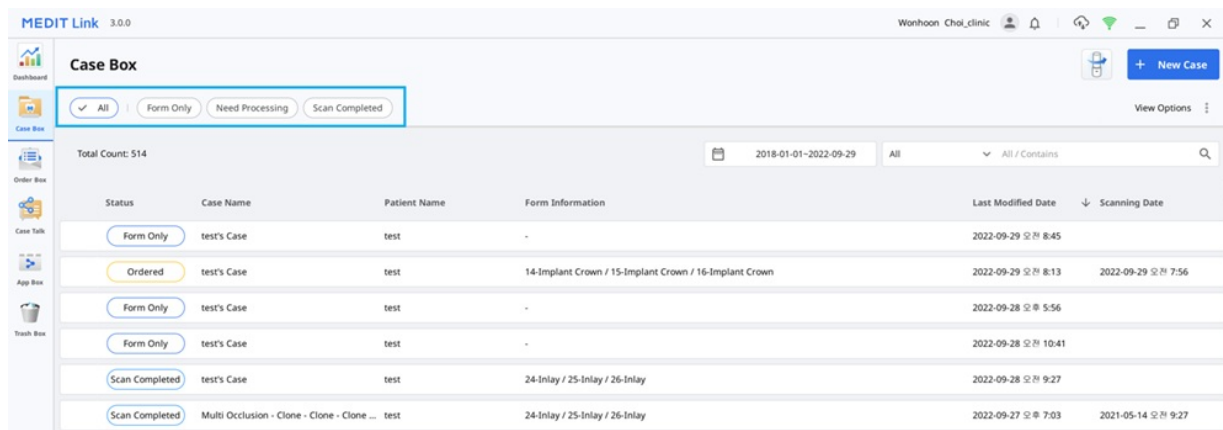

- Нажмите на статус, который вы хотите просмотреть, чтобы отобразить соответствующие ему проекты.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

Доступные параметры фильтрации для каждого раздела:

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed
In Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Не поддерживается

Элементы таблицы

Выберите элементы для отображения в списке проектов в Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Вы можете изменить порядок элементов таблицы или настроить ширину столбцов таблицы в списке для максимального удобства использования.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- :: Status
- :: Case Name
- :: Patient Name
- :: Form Information
- :: Last Modified Date
- :: Scanning Date

Hidden

Show All

- :: Birth Date
- :: Order Date
- :: Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed



Total Count: 514 2018-01-01~2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Тип просмотра

Меняйте тип просмотра в Case Box между форматами «Галерея» и «Список».

Галерея

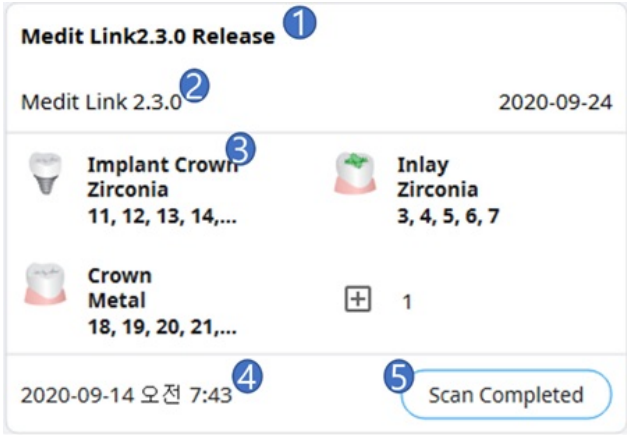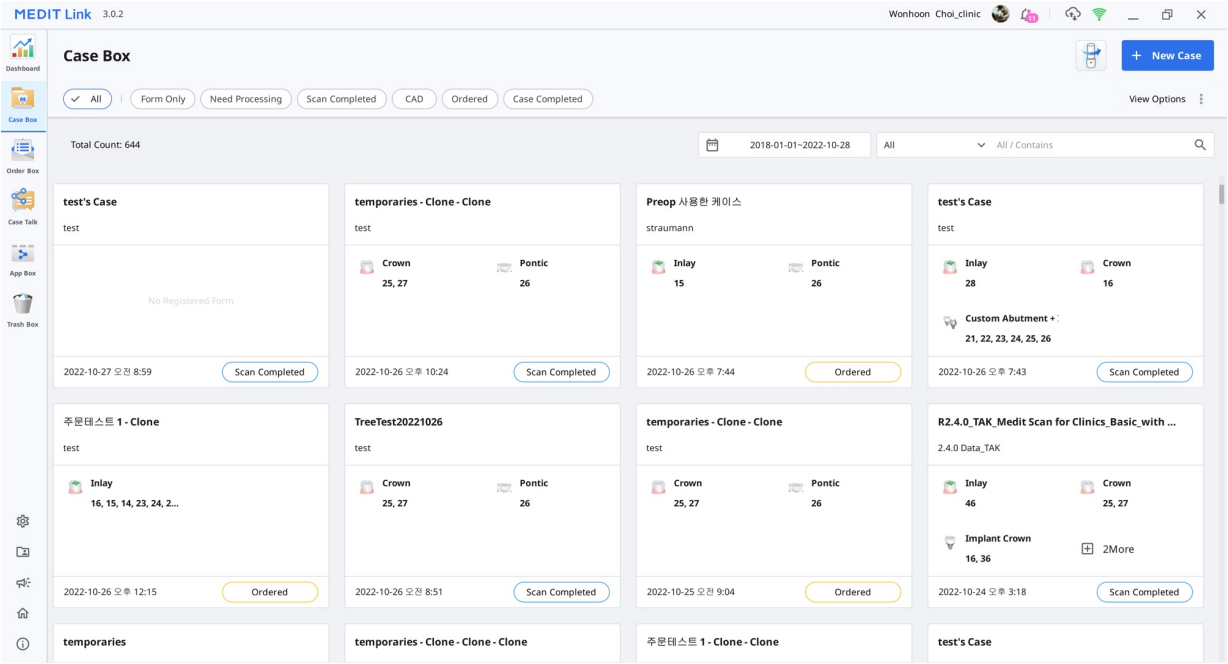

1	Название проекта
2	Имя и дата рождения пациента
3	Информация формы
4	Дата сканирования
5	Статус проекта

Список

MEDIT Link3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28

All

All / Contains

Status

Case Name

Patient Name

Form Information

Last Modified Date

Scanning Date

Lab Name

Scan Completed

test's Case

test

-

2022-10-28 오전 7:32

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone - Clone

test

25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown

2022-10-27 오후 9:29

Form Only

test's Case

test

-

2022-10-27 오후 8:45

Form Only

test's Case

test

-

2022-10-27 오후 8:39

Scan Completed

test's Case

test

12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay

2022-10-27 오후 8:31

Form Only

test's Case

test

-

2022-10-27 오후 8:30

Form Only

test's Case

test

-

2022-10-27 오후 7:33

Form Only

test's Case

test

-

2022-10-27 오후 7:07

Ordered

test's Case

test

13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay

2022-10-27 오후 3:50

Wonhoonchoi-Lab

Scan Completed

케이스를모임고주문해모수점원케이스 - Clone

test

14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay

2022-10-27 오전 11:28

2021-12-03 오후 2:37

Scan Completed

파일리스트테스트12 - Clone

test

13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...

2022-10-27 오전 10:53

2022-10-11 오후 8:12

Scan Completed

test's Case

test

-

2022-10-27 오전 9:10

Scan Completed

test's Case

test

-

2022-10-27 오전 8:59

2022-10-27 오전 8:54

Группировка

Выберите вид группировки, чтобы классифицировать и упорядочить проекты в списке по выбранному параметру.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None v

☒ None

☐ Patient Name

☐ Order Date

☐ Scanning Date

Sorting

Last Modified Date >

Для каждого раздела доступны следующие параметры группировки:

Раздел	Группировка
Case Box	Нет
	Имя пациента
	Дата сканирования
	Дата заказа
Order Box	Нет
	Дата сканирования
	Дата заказа

	Запрашиваемая дата доставки
In Box	Нет
	Дата заказа
	Запрашиваемая дата доставки
Work Box	Нет
	Запрашиваемая дата доставки

Внимание

Функции группировки и сортировки недоступны в Trash Box и Case Talk.

Сортировка

Выберите вид сортировки, чтобы изменить порядок проектов в списке в соответствии с выбранным параметром.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

☰

Sorting

Last Modified Date ▾

☐ Patient Name

☒ Last Modified Date

☐ Scanning Date

☐ Order Date

☐ Lab Name

Для каждого раздела доступны следующие параметры сортировки:

Раздел	Группировка	Сортировка
Case Box	Нет	Имя пациента/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Имя пациента	Изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/изменен/дата заказа/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/изменен/дата сканирования/название лаборатории
Order Box	Нет	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата сканирования	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории

	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории
In Box	Нет	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата заказа/название клиники
Work Box	Нет	Имя пациента /изменен/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента /изменен/название клиники

iВнимание

Функции группировки и сортировки недоступны в Trash Box и Case Talk.

Фильтрация и поиск


Фильтрация по дате

Эта функция позволяет фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного периода времени.

1. Задайте период времени.

A date range selector interface. It features a calendar icon on the left and the text "2020-08-10 ~ 2020-09-09" in the center.

2. Выберите нужный диапазон из списка.

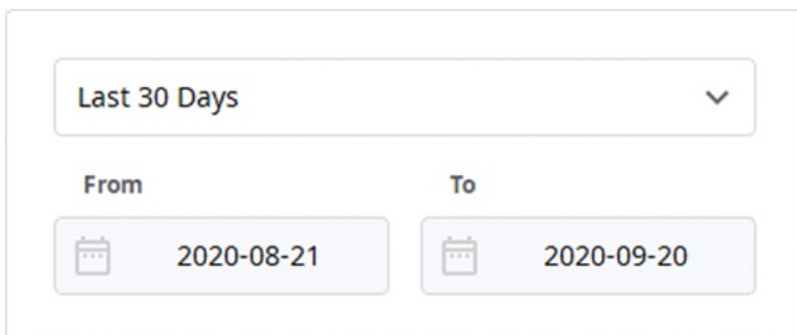
A date range selection interface. At the top is a dropdown menu labeled "Last 30 Days" with a downward arrow. Below it are two columns: "From" and "To". Each column contains a date picker with a calendar icon and a date: "2020-08-21" for "From" and "2020-09-20" for "To".

- All: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, последние изменения в которые были внесены в заданный период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Этот месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение текущего месяца.
- Предыдущий месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение прошлого месяца.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Расширенные возможности поиска

Используйте возможности поиска, чтобы быстро найти нужную вам информацию.

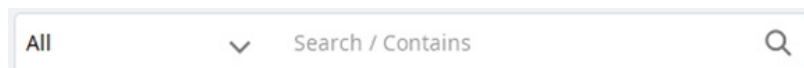A search bar interface. It has a dropdown menu on the left showing "All" with a downward arrow. In the center is the text "Search / Contains". On the right is a magnifying glass icon.

Для каждого раздела доступны следующие критерии поиска:

Case Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, информация формы, название лаборатории
Order Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории, номер заказа
In Box	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа

Work Box	Все, название проекта, имя пациента, информация формы, название клиники, номер заказа
Case Talk	Название Case Talk (содержит), имя пациента (равно)
Trash Box (клиника)	Все, название проекта, имя пациента, название лаборатории, кем удалено
Trash Box (лаборатория)	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, кем удалено

Вы можете задать критерии поиска и выбрать такие логические значения как «Содержит» и «Равно».

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов

Создание проектов

Создание проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. Введите основную информацию, такую как имя пациента и название проекта.
 - Если вы введете имя, которого нет в списке пациентов, будет добавлен новый пациент.
 - Если же вы введете имя, которое есть в списке пациентов, вы сможете выбрать его из списка.
 - При регистрации проекта для существующего пациента нажмите на значок списка пациентов, чтобы выбрать существующего пациента.
- 
- В диалоговом окне «Список пациентов» вы можете зарегистрировать нового пациента или отредактировать информацию о существующем пациенте.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medis Link.

ALL Search / Contents

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-09-08	
☐	Wanhuan Cho				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Нажмите «Записать и сканировать», чтобы завершить регистрацию проекта и приступить к сканированию.
 - **Зарегистрировать:** Вы будете перенаправлены на главную страницу. Это

полезно при регистрации нескольких проектов.

- **Записать и сканировать:** Перемещает на вкладку «Форма» для регистрации информации формы для проекта.

Создание проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Введите или выберите название клиники.
3. Введите имя пациента и название проекта. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Введите ожидаемую дату доставки с учетом даты завершения работы.
5. После регистрации проекта вы будете перенаправлены на главную страницу.

Редактирование проектов

Редактирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Щелкните значок поиска, чтобы изменить имя пациента. Обратите внимание, что его нельзя редактировать напрямую, но вы можете найти в списке имя пациента, которым хотите заменить текущее имя, и отредактировать его информацию.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Отметьте имя пациента, которым вы хотите заменить текущее.
- Чтобы создать нового пациента, нажмите кнопку «Новый пациент».
- Используйте кнопку «Редактировать», чтобы изменить зарегистрированную информацию о пациенте.
- Нажмите «Применить», чтобы завершить процесс.

Редактирование проекта в Work Vox (лаборатория)

- Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Нажмите «Применить» после завершения редактирования.

Внимание

Вы не можете редактировать информацию проектов, полученных через заказ в In Box.

Клонирование проектов

Клонирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Вам будет предложено ответить на вопрос, какой тип информации вы хотите клонировать в новый проект.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Выберите, следует ли реплицировать только информацию формы или же полностью все данные.
4. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».

Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Продублируйте все данные, чтобы создать новый проект.
3. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».


Удаление проекта

Удаление проекта (клиника и лаборатория)

1. Нажмите на значок «Удалить».



2. Нажмите «ОК», чтобы удалить проект.

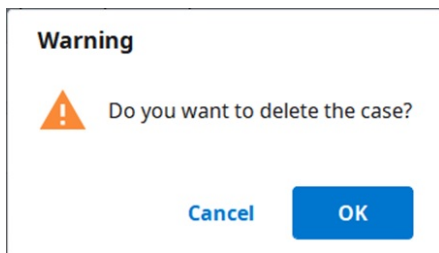

3. Удаленные проекты перемещаются в Trash Box и при необходимости могут быть восстановлены.

Информация формы

Вы можете ввести информацию формы в зависимости от подключенной программы и типа лечения.

Введенная вами информация будет использоваться в качестве базовой для работы в программах сканирования или CAD и оформления заказов.

Регистрация информации формы в Case Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите, собираетесь ли вы вводить информацию о лечении по зубам или по дуге.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке заказов.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Ввод на вкладке «CAD»

1. Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
2. Выберите номер зуба/дугу/номер штампа.
3. Определите настройки для подробных параметров и операций CAD.
4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке заказов.
5. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Регистрация информации формы в Work Box

Ввод на вкладке «Форма»

1. Выберите программу сканирования, которую хотите использовать.
2. Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
3. Методы могут отличаться в зависимости от выбранной программы сканирования.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зубы	☐	☐
Дуга	☐	☐
Гибкий мульти-штамп	☒	☐
Мульти-штамп	☒	☐

4. Выберите номера зубов, дуги или штампа для процесса сканирования.
5. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Ввод на вкладке «CAD»

1. Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
2. Выберите номер зуба/дугу/номер штампа.
3. Определите настройки для подробных параметров и операций CAD.
4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке.
5. Нажмите «Сохранить».

Соединение зубов в мост

Вы можете соединить несколько зубов в мост, если один и тот же материал применяется к нескольким соседним зубам. Нажмите на значок моста рядом с выбранными зубами, чтобы соединить или разъединить их.



Настройка параметров сканирования

В зависимости от программы, с которой вы работаете, вам доступны различные параметры сканирования.

Выбранные параметры передаются каждой программе сканирования.

Medit Scan for Labs

Общие параметры

	Соседние зубы	Отмечает препарированные и соседние зубы и передает эту информацию в программу сканирования.
	Антагонист	Автоматически отмечает антагониста и передает эту информацию в программу сканирования.
	Артикулятор	Отображает параметры выбора артикулятора в программе сканирования.
	Маркер движения	Позволяет использовать стратегию сканирования «Движение челюсти» в программе сканирования.

Опции по зубам

	Сканмаркер	Позволяет задать стратегию сканирования сканмаркера в программе сканирования.
	Предоперационное сканирование	Позволяет задать стратегию сканирования предоперационной модели в программе сканирования.
	Сканирование восковой модели	Позволяет задать стратегию сканирования восковых моделей в программе сканирования.

Добавление в Избранное

Вы можете быстро выбрать продукт, просто добавив его в Избранное.

Список избранного управляется подобно шаблону, и им можно поделиться с помощью функций экспорта и импорта.

Как добавить в Избранное

1. Выберите номер зуба.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Тип – Метод – Материал – Оттенок могут быть добавлены в Избранное, даже если выбраны не все из них.
3. Нажмите на звездочку.

4. Комбинация выбранных параметров, за исключением номера зуба, находится в вашем списке избранных поисковых запросов.

Управление избранными шаблонами

Вы можете регистрировать, управлять и обмениваться различными типами шаблонов.

Добавить	Добавляет новый шаблон.
Переименовать	Переименовывает текущий шаблон.
Удалить	Удаляет текущий шаблон.
Экспортировать	Экспортирует текущий шаблон в файл.
Импорт	Импортирует файл шаблона.

Работа по сканированию/CAD

Процесс сканирования

На основании введенной информации вы переходите к сканированию.

1. Введите или сохраните информацию о лечении и выберите необходимые параметры сканирования.
2. Нажмите кнопку «Сканировать» в правом верхнем углу окна.

Процесс CAD

Medit Link интегрирован с exocad.

CAD	Регистрация информации о лечении	Подтверждение информации о лечении	Прямое выполнение CAD	Импорт результатов CAD обратно в Medit Link
exocad	О	О	О	О

1. В разделе Настройки > Установить подключенную программу вы можете связать выбранную вами программу CAD из списка.
2. На вкладке «CAD» введите/сохраните информацию о задаче и параметрах проектирования.
3. Нажмите «CAD» в правом верхнем углу окна.
4. Связанная программа CAD запускается, и данные отправляются автоматически.
5. Сохраните результаты после выполнения CAD.

Внимание

Medit Link для Mac не поддерживает функцию связи с CAD.

Получение файлов результатов

Экспорт файлов результатов сканирования

Помимо обмена результатами с партнерами через заказы, Medit Link позволяет сохранять результаты в нужном файловом формате с помощью функции экспорта.


Экспорт файлов в	Указывает путь для сохранения результатов.
Имя папки	Система создает новую папку и сохраняет в ней все результаты. Имя папки по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя папки напрямую. Задать правило именования можно через Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени папки
Имя файла	Задаёт имя файла для результата. Имя файла по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя файла напрямую. Задать правило именования можно через Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени файла
Тип CAD	Выберите программу CAD, которая будет использоваться для вашей программы проектирования. Medit Link настроит файлы на основе этого выбора, что позволит вам продолжить проектирование без дополнительного выравнивания осей.
Формат файла сетки	Задаёт формат файла сетки.
Формат изображения	Задаёт формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать файлы	Сжимает все результаты в один файл.

Объединить файлы при экспорте	Объединяет результаты сканирования верхней или нижней челюсти с данными сканирования отдельных зубов. Полезно, когда нет возможности импортировать в программу несколько файлов.
Экспорт всех окклюзионных взаимоотношений	Когда приложение для сканирования создает несколько результатов окклюзии, их можно экспортировать одновременно.
Сохранить информацию о проекте в формате PDF	Сохраняет информацию о проекте в формате PDF вместе с результатами.


Экспорт выбранных файлов

Medit Link предоставляет функцию экспорта из раскрывающегося меню Просмотрщика файлов. Используя эту функцию, вы с легкостью сможете экспортировать выбранные файлы.

1. В Просмотрщике файлов нажмите на значок меню рядом с группой данных или объектом в дереве данных.
2. Затем нажмите «Экспортировать».

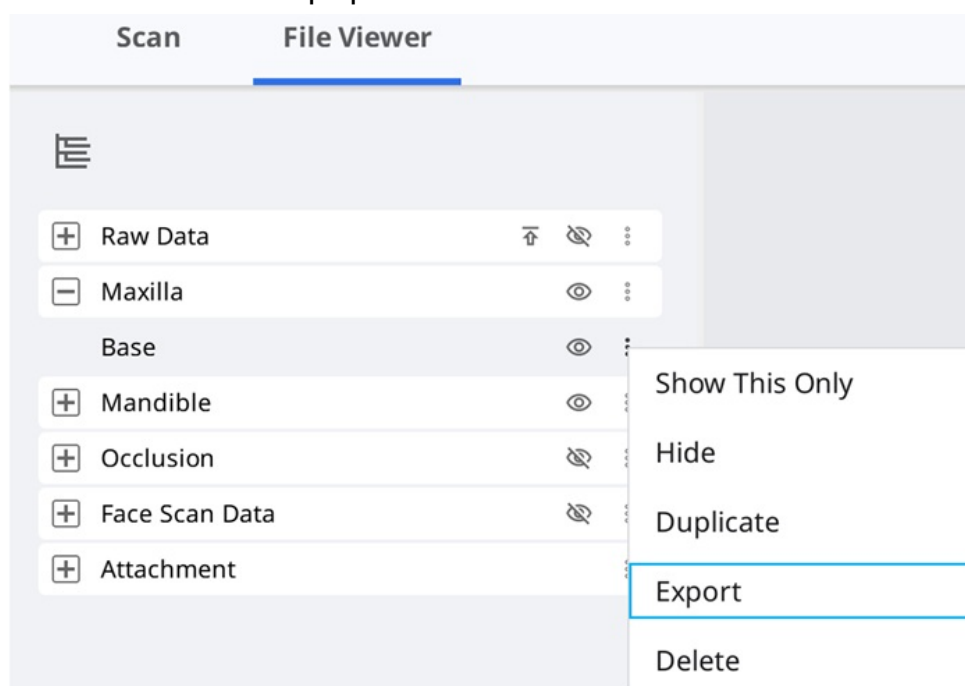

3. В открывшемся диалоговом окне экспорта отобразятся только те файлы, которые вы хотите экспортировать.

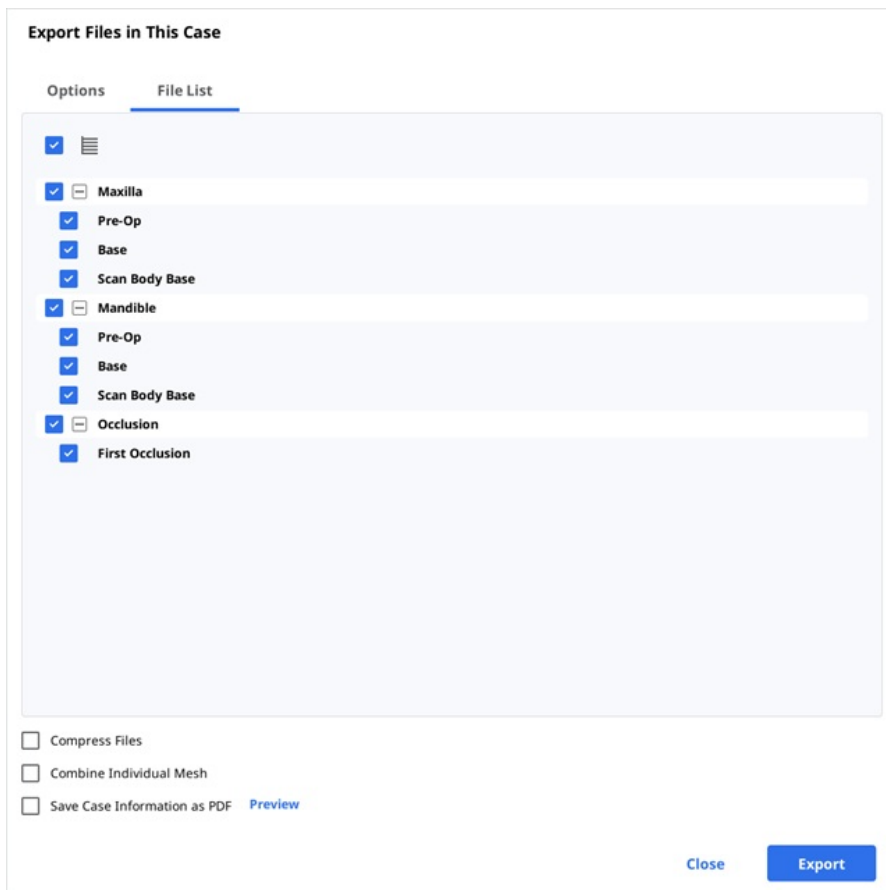

4. Наконец, нажмите «Экспортировать».

Экспорт линии края


В Medit Scan for Clinics реализована функция создания линии края, а с помощью Medit Link можно передать линию края в программу CAD.

Экспорт линии края в виде цвета

Как правило Medit Link преобразует линию края в цвет и экспортирует результат вместе с верхней или нижней челюстью. Вы можете создать линию края в своей программе CAD, ориентируясь на информацию о цвете.

Пример:



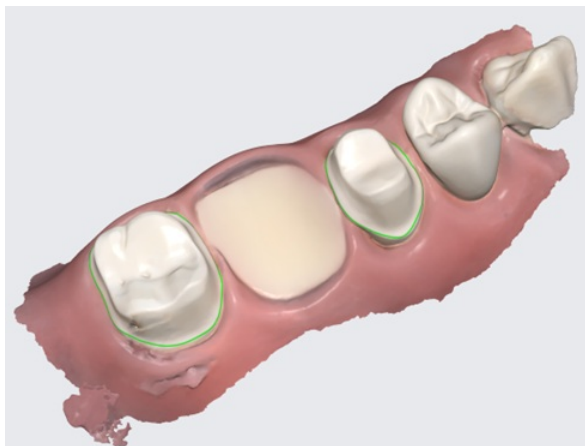

Результат с линией края, показанной цветом

Внимание

Эта функция доступна для форматов, которые включают информацию о цвете, таких как meditMesh, OBJ и PLY. Линия края не преобразуется в STL.

Внимание

Тип CAD > 3Shape не поддерживает эту функцию.


Экспорт линии края в виде файла

В случае с exocad Medit Link экспортирует линию края в файл «~margin.xyz», который можно импортировать в exocad напрямую.

Этот файл можно использовать в exocad без дополнительной работы.

Пример:

Верхняя челюсть	Линия края
-----------------	------------

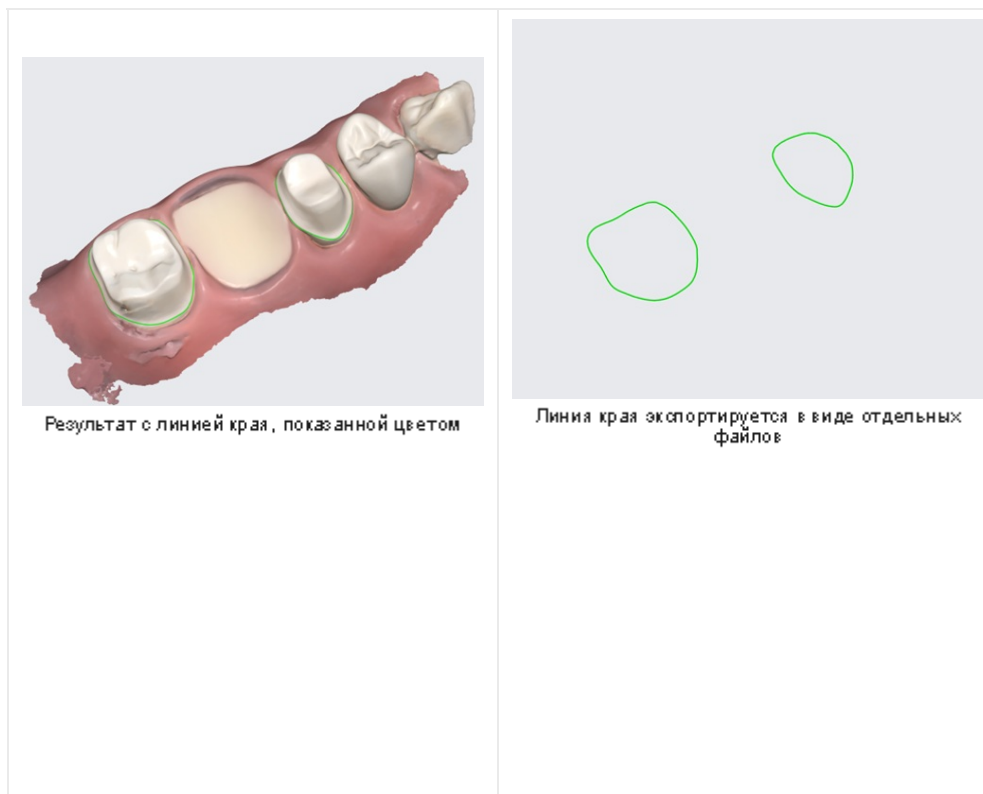

Экспорт списка проектов в формате CSV

Medit Link предоставляет функцию экспорта списка проектов в формате CSV.


Вы можете экспортировать список проектов с основной информацией и с легкостью управлять проектами.

Функция «Экспортировать в CSV» доступна для следующих разделов приложения Medit link:

- In Box
- Work Box

Как экспортировать список проектов

1. Перейдите в In Box или Work Box.
2. Выберите проекты, которые хотите экспортировать.

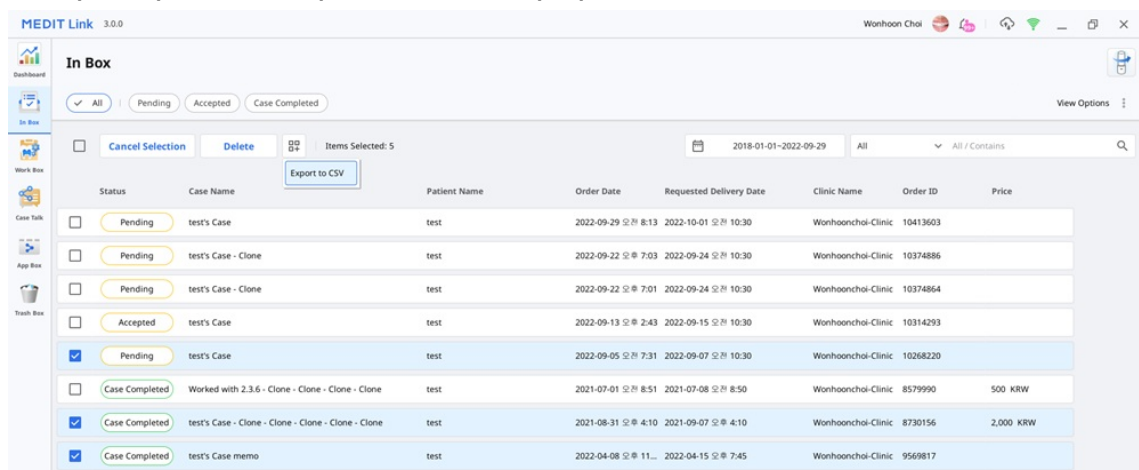

3. Нажмите на значок расширенного меню вверху, чтобы выбрать параметр «Экспортировать в CSV».



4. Задайте путь и имя файла, затем сохраните результаты.

Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link

Medit Link поддерживает функцию скачивания файлов.

Если вы хотите получить файлы результатов без установки приложения Medit Link, вы можете скачать файлы из веб-сервиса Medit Link.

Внимание


Чтобы скачать файлы из интернета, данные должны быть загружены в облачное хранилище Medit.

Функция скачивания доступна для следующих разделов веб-сервиса Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Вы можете найти кнопку «Скачать» в правом верхнем углу.

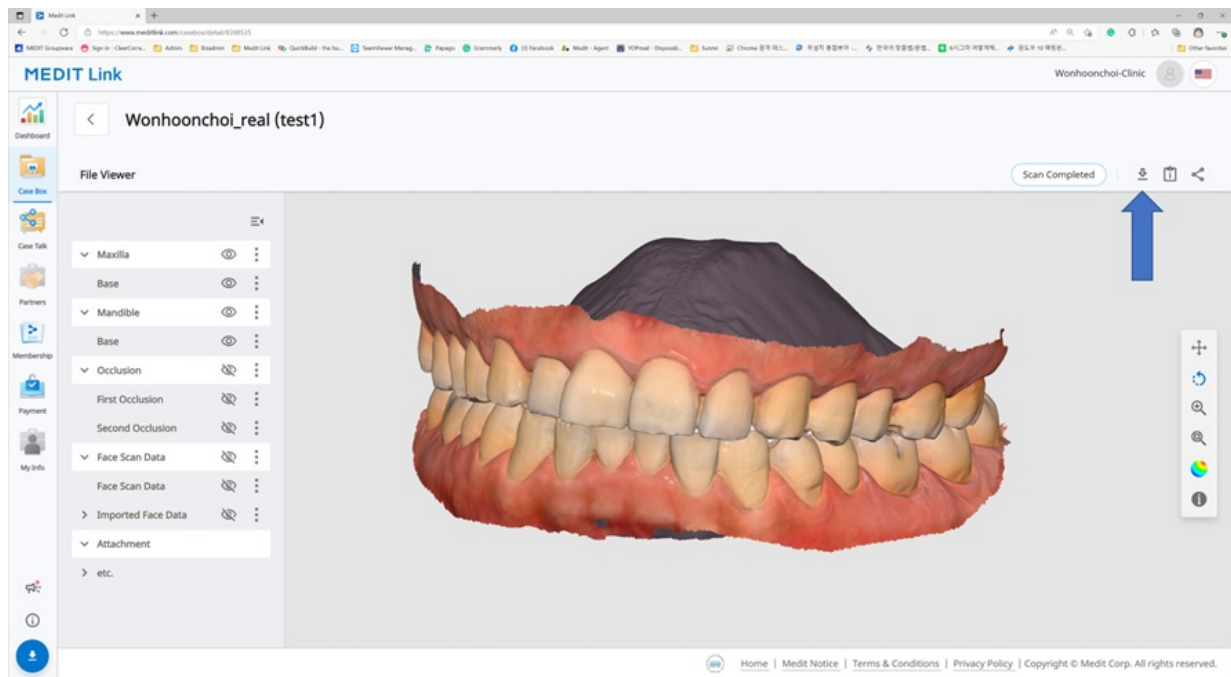

Web Viewer

Когда вы делитесь проектом с помощью Case Talk, вы можете указать, разрешать скачивание или нет.

Если вы установите флажок «Предоставить разрешение на скачивание» и предоставите общий доступ к проекту, все пользователи, которые подключатся к общей ссылке, смогут скачать файлы.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: [] PIN Code [Enter PIN Code]

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

В Web Viewer вы можете найти значок «Скачать» в правом верхнем углу.

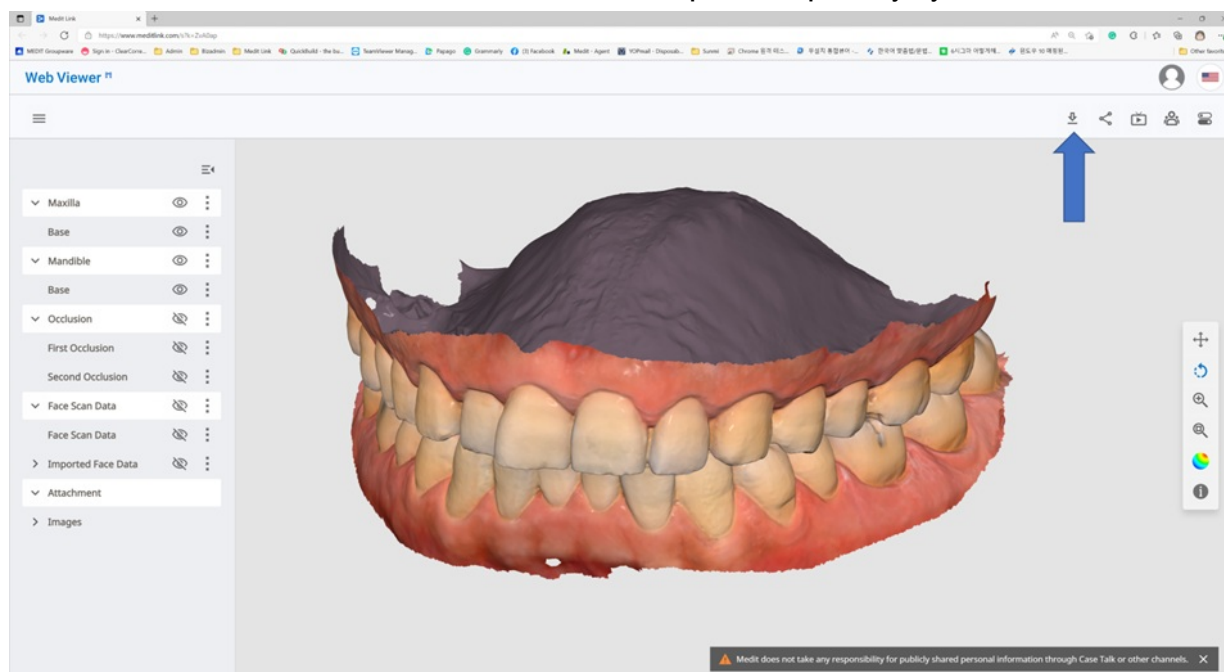

Как скачивать файлы

1. Нажмите «Скачать».



2. Выберите формат файла сетки в открывшемся диалоговом окне скачивания.

Download [Premium Feature](#)

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) [OK](#)

3. Затем нажмите «OK».

Заказ/управление проектами

Вы можете с легкостью заказать проект с данными, полученными из подключенных программ, и данными, прикрепленными пользователем.

Заказ проектов

Вы можете оформить заказ для своих партнеров в Case Box.

1. Нажмите кнопку «Заказ».
2. Проверьте информацию, необходимую для вашего заказа.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: AM 8:00 to PM 8:00 (Slider set to 8:15 AM)

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Выберите партнера.
4. Проверьте информацию о продукте на вкладке «Список заказов».
 - Решите, следует ли делиться именем пациента.
5. Проверьте файлы для заказа на вкладке «Список файлов».
6. Введите желаемую дату доставки.
 - Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
7. Добавьте заметки или теги для вашего партнера для уточнения каких-либо деталей.
8. Когда программа сканирования сформирует результаты множественной окклюзии, вы сможете отправить все результаты окклюзии одновременно, установив флажок «Заказать все окклюзионные взаимоотношения».
9. Продолжите оформление заказа.
 - **Пропустить оплату:** оформите заказ без использования платежной системы, предоставляемой Medit Link. Доступно при заказе у партнеров со статусом «Контракт».
 - **Оплата:** используйте платежную систему, предоставляемую Medit Link, чтобы продолжить оформление заказа. Доступно при заказе у партнеров, с которыми заключен контракт.
 - **ОК:** заказ выполняется без каких-либо условий относительно цены продукта. Доступно при заказе у партнеров со статусом «Партнерство».


Внимание

Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Пропустить оплату
- Оплата


Подтверждение заказа (In Box)

- Примите заказ после его получения.
- Принятые заказы будут перенаправлены в Work Box.

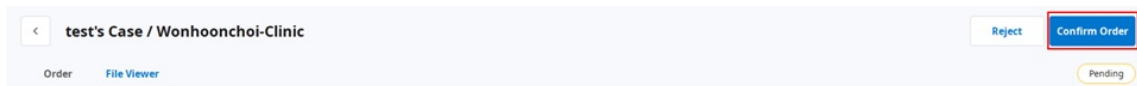


Отменить заказ (Order Box)

- Вы можете отменить заказ до того, как его примет ваш партнер.
- Отмененные проекты можно заказать повторно.

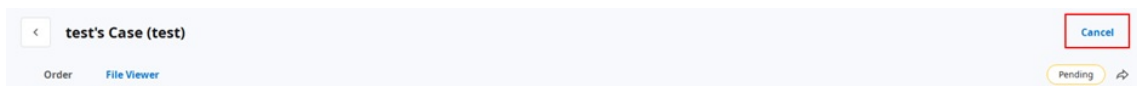


Отклонить заказ (In Box)

- Вы можете отклонить полученный заказ.
- Отклоненные проекты можно заказать повторно.

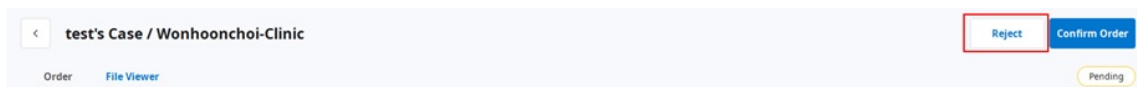

Проверка заказанных проектов

Детали заказанного вами проекта можно просмотреть в Order Box в учетной записи клиники. Вы также можете просмотреть проект, полученный через In Box, в учетной записи лаборатории.

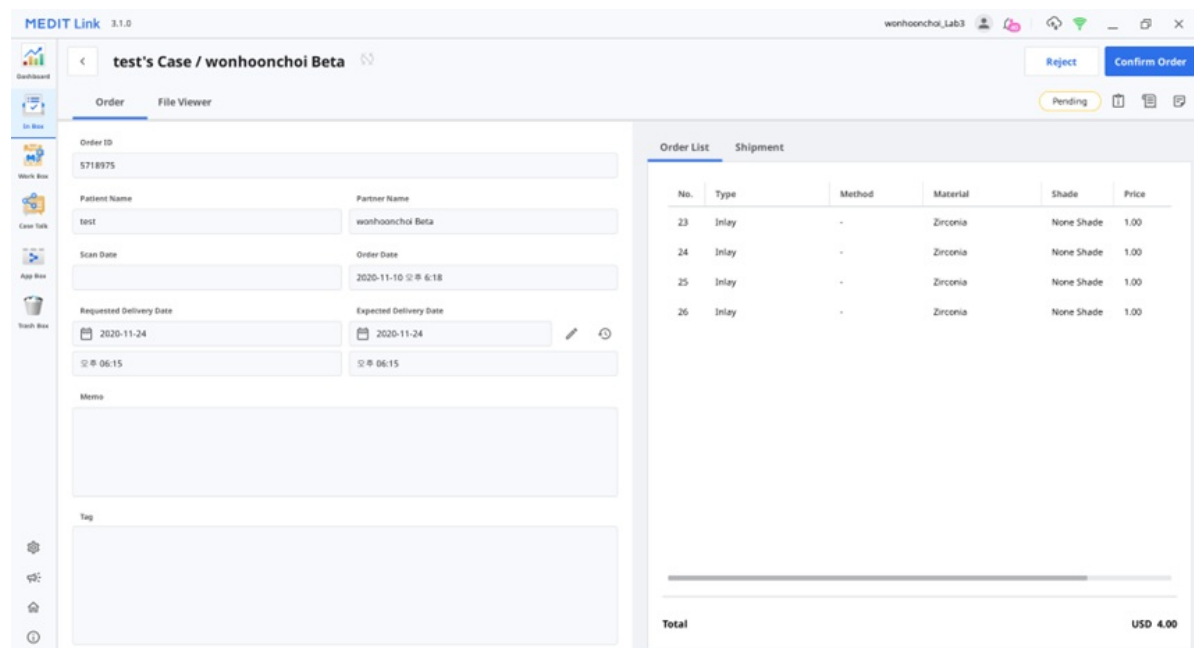

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Информация о заказе	Информация, которую можно включить в заказ: номер заказа/имя пациента/имя учетной записи/дата сканирования/дата заказа/дата доставки/срок доставки/ заметки. Вы можете проверить детали заказанного продукта и подтвердить информацию о доставке.
Список заказов	Список заказов отображает подробную информацию о заказанном продукте.
Доставка	Введите/проверьте информацию о доставке.

Ввод информации о доставке (In Box)

Введите информацию о доставке для завершенного проекта и начните отгрузку.

1. Нажмите на вкладку «Доставка».
2. Введите информацию о доставке и нажмите «Зарегистрировать».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. Введенная информация отправляется вашему партнеру.

Управление датой доставки

При размещении заказа вы можете указать ожидаемую дату доставки, и эта информация будет перенаправлена вашему партнеру.

Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)

- При заказе через Case Box вы можете ввести запрашиваемую дату доставки.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
- Введите дату/время, когда вы хотите получить продукты, и продолжите оформление заказа.
- Вы можете легко установить время с помощью ползунка.

Установка ожидаемой даты доставки (учетная запись клиники)

- Вы можете ввести ожидаемую дату доставки для заказанного проекта в In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 7:56

Order Date
2022-09-29 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01

Expected Delivery Date
2022-10-01

10:30 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: 00ENTIS_Custom_iNMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: 00ENTIS_Custom_iNMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: 00ENTIS_Custom_iNMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

1. Сверьте с партнером запрашиваемую дату доставки и внесите корректировки в расписание, используя кнопку «Редактировать».



2. Введите ожидаемую дату доставки с учетом фактического рабочего дня. При необходимости оставьте комментарий.
3. Нажмите «Применить».

4. Ожидаемая дата доставки и заметки будут отправлены вместе с заказом.
 - Дату и заметки можно просмотреть в Order Box.
 - Вы можете изменить ожидаемую дату доставки, и эти изменения будут отправлены вашему партнеру.
5. Вы можете просмотреть историю проекта, используя кнопку «История».



Завершение работы

Завершение работы (Work Box, In Box)


После выполнения всех задач нажмите «Готово», чтобы завершить проект.

Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте

Вы можете найти значок меню справа от кнопки «Открыть».



Завершите работу, нажав на значок меню и выбрав в выпадающем списке кнопку «Готово».

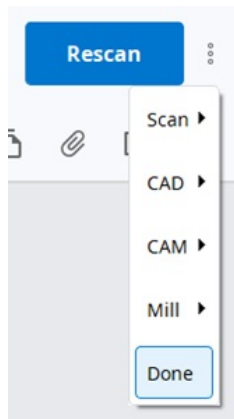


Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов

При выборе проектов из Work Box в верхней части списка появляется значок расширенного меню.



Завершите несколько проектов следующим образом:

1. Перейдите в Work Box.
2. Выберите все проекты, которые необходимо завершить.

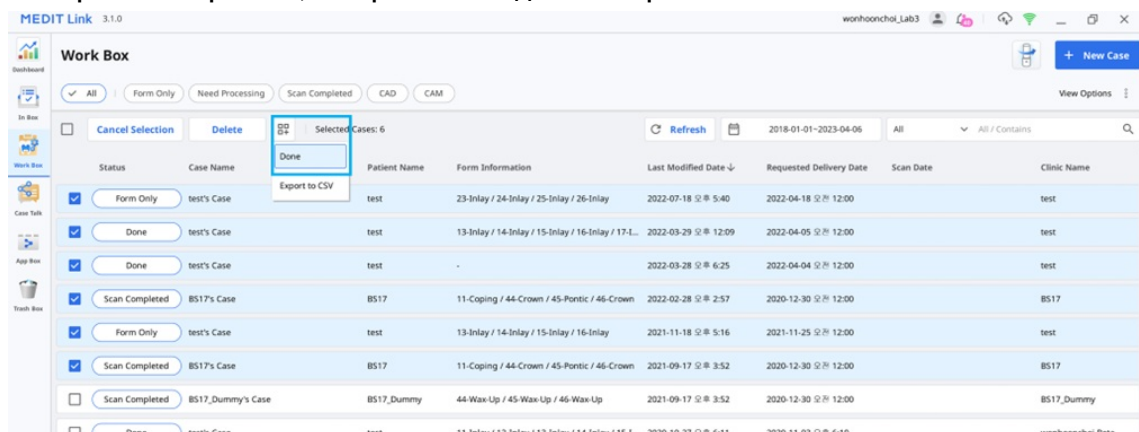

3. Нажмите на вышеупомянутый значок расширенного меню.




4. Выберите «Готово» из списка.

Завершение работы (Case Box/Order Box)

После завершения проекта в лаборатории клиники необходимо подтвердить проект, чтобы полностью завершить процесс заказа.

После того как лаборатория завершит свою работу, в учетной записи клиники в Order Box появится кнопка «Подтвердить доставку».


Нажав на нее, вы завершите весь процесс заказа, и статус проекта будет изменен на «Case Completed».

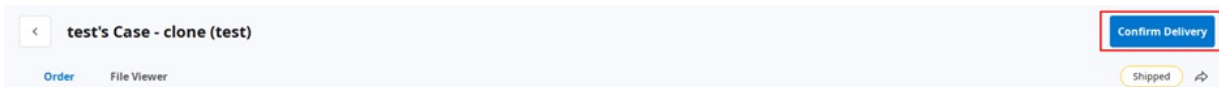

Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box

Проекты, которые не были заказаны в лаборатории, можно завершить в Case Box.

1. Перейдите в Case Box.
2. Выберите проект, который хотите завершить.

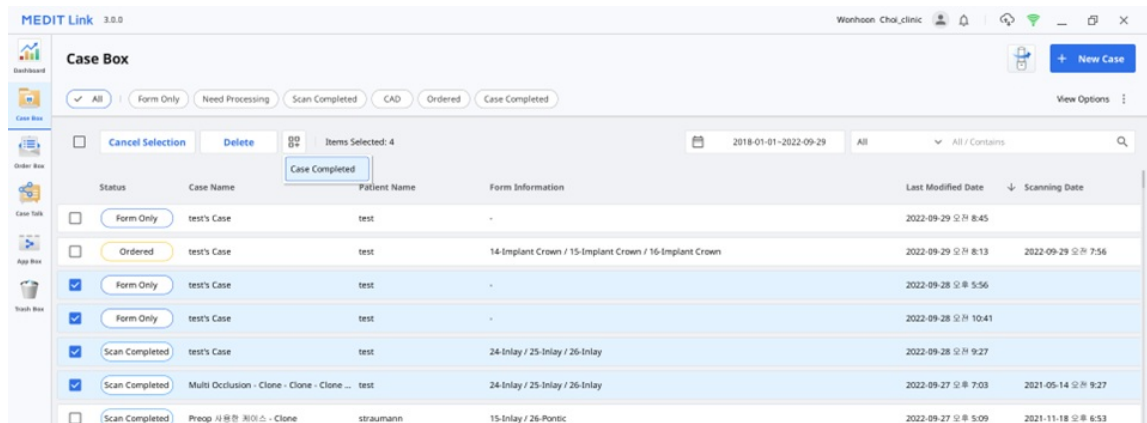

3. Нажмите на значок расширенного меню.



4. Выберите «Case Completed».

Общение с помощью тегов

Вы можете добавить дополнительную информацию для своего проекта с помощью тегов и отправить их своим партнерам.

Добавление тегов при создании нового проекта

Вы можете вводить теги при создании нового проекта или редактировании информации о проекте.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Вы можете легко искать и выбирать теги, которые вы использовали раньше.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

121

Добавление тегов при оформлении заказа

Проверяйте и редактируйте теги в диалоговом окне «Заказ» во время оформления заказа.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Просмотр тегов в сведениях о проекте

