

USER GUIDE

Medit Link

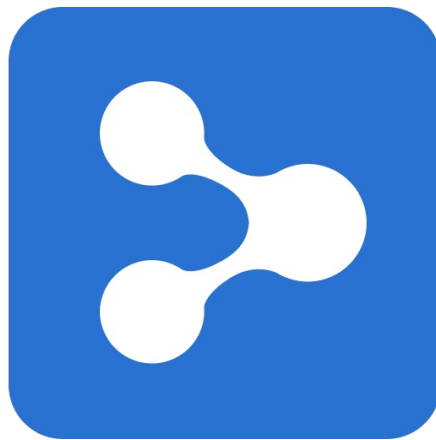


Table of Contents

Medit Link

Introducere	6
Medit Link	6
Prezentare generală Servicii	6
Serviciu cloud	7
Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă	7

Medit Link > Instalare

Cerințe sistem	9
Cerințe sistem pentru Windows	9
Cerințe sistem pentru macOS	9
Cerințe de sistem pentru serviciul web	9
Recomandat pentru browsere	9
Minimum pentru dispozitive mobile	9
Instalare pe Windows	10
Instalare pe macOS	12
Medit Link este instalat ca un pachet cu Medit Scan for Clinics.	12

Medit Link > Medit Link Web

Prezentare generală	16
Dashboard	17
Prezentare generală Dashboard	17
Medit Insights	17
Abonează-te la Medit Insights	18
Dezabonare Medit Insights	19
Case Box/Work Box	20
Filtrare caz	20
Filtreză după statut	20
Filtrare după durată	20
Filtrare după căutare	21
Detalii caz	21
Order Box/In Box	23
Detalii comandă	23
File în Order Box/In Box	23
Case Talk	24
Crearea unui Case Talk	24
Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare	25
Detalii Case Talk	27
Web Viewer	28
Adnotare	29
Comentarii	29
Partajarea ecranului în timp real	30
Arbore de date	30
Controale arbore de date	30
Controalele modelului 3D	31
Parteneri	33
Caută parteneri	33
Lista mea de parteneri	33
Invitarea partenerilor	34
Abonament	35
Abonament	35
Planul meu	35

Spațiu de stocare Cloud	36
Abonează-te	37
Dezabonare	39
Informații facturare	40
Cum să adaugi o metodă de plată	41
Cum să schimbi o metodă de plată	43
Răscumpără	44
Înregistrează codul răscumpărării	44
Activează codul de răscumpărare	45
Plată	46
Detalii plată (Conturi de clinică & laborator)	46
Informații despre contul de plată (doar pentru contul de laborator)	46
Informațiile mele	47
Contul meu	47
Organizația mea (numai pentru contul de administrator)	47
Scannerul meu	48
Lista mea de prețuri (doar pentru contul de administrator de laborator)	48
Alt meniu	49
Aviz & actualizare	49
Medit informații	49
Descarcă Medit Link App	49

Medit Link > Medit Link App

Prezentare generală	51
Prezentare generală Box	51
Bară de titlu	53
Informațiile mele	53
Notificări	53
Manager sincronizare caz	54
Încarcă	55
Descarcă	55
Starea rețelei	56
Meniu	57
Dashborad	57
Case Box/Work Box	57
File în Case Box/Work Box	58
Funcții în Case Box/Work Box	58
Order Box/In Box	59
File în Order Box/In Box	60
Case Talk	60
App Box	60
Trash Box	61
Setări	62
Managementul pacientului	62
Adaugă pacient nou	62
Șterge pacienți	62
Combină pacienți	63
Aviz & actualizare	64
Mergi la Medit Link Web	64
Medit informații	64
Setări	65
General	65
Managementul stocării	66
Setează perioada	66
Stocare locală	66
Spațiu de stocare Cloud	67

Setează programul conectat	67
Opțiuni de export	68
Instrument de conversie a cazurilor	69
Cum se utilizează Instrumentul de conversie a cazurilor	69
Opțiuni proxy	71
Despre	71
Manualul utilizatorului	72
Vizualizare fișier	73
Arbore de date	73
Instrumente de control model	73
Control model 3D	73
Control imagine 2D	74
Instrumente de funcție	75
Captură de imagini și Memo	75
Captură orto	75
Umple găuri	76
Decupare	77
Optimizează alinierea ocluziei	79
Mișcarea mandibulară	81
Gestionează datele de ocluzie multiplă în vizualizare fișier	82
Cum se gestionează mai multe rezultate	82
Vizualizează opțiuni	83
Statut filtre	83
Tabel articole	84
Vezi tip	85
Vizualizare galerie	86
Vizualizare listă	87
Grupare	87
Sortare	88
Filtrare și căutare	90
Filtrează după dată	90
Capacități de căutare avansată	90

Medit Link > Flux de lucru

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz	92
Crearea de cazuri	92
Creează un caz în Case Box (Clinică)	92
Crearea unui caz în Work Box (Laborator)	93
Editare cazuri	93
Editare cazuri în Case Box (Clinică)	93
Editează cazuri în Work Box (Laborator)	94
Clonarea cazurilor	95
Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)	95
Clonarea cazului în Work Box (Laborator)	95
Ștergerea cazurilor	95
Șterge caz (clinică și laborator)	95
Informații formular	97
Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box	97
Introdu în fila Formular	97
Introdu în fila CAD	97
Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box	97
Introdu în fila Formular	97
Introdu în fila CAD	98
Conectarea dinților în punte	98
Setarea opțiunilor de scanare	98
Medit Scan for Labs	98

Opțiuni generale	98
Opțiuni în funcție de dinți	98
Adăugare la favorite	99
Adaugă la favorite	99
Gestionează șabloanele favorite	99
Lucrează la scanare/CAD	100
Proces de scanare	100
Proces CAD	100
Obține fișierele de rezultate	101
Exportă fișierele de rezultate ale scanării	101
Exportă fișierele selectate	102
Exportă Linia marginală	103
Exportă linia marginală ca o culoare	103
Exportă linia marginală ca fișier	104
Exportă lista de cazuri ca CSV	105
Cum se exportă lista de cazuri	105
Descarcă fișiere de pe Medit Link Web	106
Case Box/Work Box	106
Web Viewer	106
Cum se descarcă	107
Comandă/gestionează comenzi	109
Poți să comanzi cu ușurință un caz cu datele obținute de la programele conectate și datele atașate de către utilizator	109
Comandarea cazurilor	109
Confirmă comanda (In Box)	110
Anulează comanda (Order Box)	110
Refuză comanda (In Box)	110
Verificarea cazurilor comandate	110
Introducerea informațiilor despre expediție (In Box)	111
Gestionarea datei de livrare	111
Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)	111
Completarea cazurilor	113
Complet (Work Box/In Box)	113
Completează un caz din detaliile cazului	113
Completează cazurile multiple din lista de cazuri	114
Complet (Case Box/Order Box)	114
Termină un caz necomandat în Case Box	114
Comunică folosind etichete	116
Adaugă etichete la crearea unui caz nou	116
Adaugă etichete la comandă	117
Verifică etichetele de pe Detaliile cazului	117

Introducere

Medit Link

Medit Link este un instrument de colaborare conceput pentru a facilita comunicarea între clinici și laboratoare pentru a oferi un flux de lucru optimizat pentru fiecare parte.

Oferă funcții diferențiate în funcție de tipul și permisiunile fiecărui cont. Programul oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat pentru gestionarea fluxului de lucru, de la scanarea cu scanere orale și modele, comandarea cazurilor și proiectarea și producerea de proteze.

Medit Link este alcătuit dintr-un serviciu web și o aplicație de calculator.

Prezentare generală Servicii

		Web	Aplicație
		• Înregistrează-te și gestionează contul • Caută • Caută și gestionează parteneri • Partajează cazuri prin Web Viewer cu un link partajabil • Accesează cazurile realizate din aplicație • Gestionează comenzile	• Introdu informații formular • Scanează • Plasează/Primește comenzi și efectuează plăți • Conectare cu CAD • Gestionează pacienți
Clinică	Administrator	Caută și gestionează partenerii și organizația ta, gestionează informațiile de plată și partajezi cazurile. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Parteneri - Abonament - Plată - Informațiile mele	Introdu informații din formular, scanează, conectează-te cu CAD, plasează comenzi, efectuează comenzi și gestionează pacienți. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Managementul pacientului
	Membru	- Case Box - Case Talk - Informațiile mele	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Laborator	Administrator	Caută și gestionează partenerii și organizația ta, gestionează informațiile de plată și partajezi cazurile. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Parteneri - Abonament - Plată - Informațiile mele	Introdu informațiile din formular, scanează, conectează-te cu CAD și primește/gestionează comenzile. - Dashboard - În Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Membru	- Work Box - Case Talk - Informațiile mele	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Plată

Serviciu cloud

Medit Link susține încărcarea/descărcare automată a bazelor de date și a fișierelor prin AWS (Amazon Web Services).

Datele stocate în cloud sunt sincronizate automat cu computerele mai multor utilizatori din organizație, astfel încât aceștia să poată accesa aceleași date de pe orice computer în orice moment. Backup-ul și recuperarea bazate pe cloud îți păstrează toate datele în siguranță. Îți păstrează datele în siguranță chiar și în cazul pierderii de date din cauza unei defecțiuni bruște a computerului.

Serviciul cloud permite stomatologilor și laboratoarelor partenere să partajeze rapid datele fără a mai fi nevoie să trimită e-mailuri sau să transfere manual scanările. Toate datele, inclusiv informațiile despre pacienți, sunt criptate, stocate și transmise în condiții de siguranță. Medit respectă legile și reglementările medicale, cum ar fi HIPAA și GDPR.

Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă

Medit Link oferă propriul sistem de comandă și plată.

- Medit Link îți permite să creezi contracte între dentiști și laboratoare dentare și să partajezi date rapid și ușor.
- Poți verifica și gestiona starea comenzii.

Sistemul bazat pe carduri de credit funcționează cu modulele de plată ale platformelor de plată online, cum ar fi Stripe (www.stripe.com) și I'mPort (<http://www.iimport.kr>), ceea ce face ca serviciile de plată să fie simple și convenabile.

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- **Plată**

Cerințe sistem

!Notă

Consultă cerințele de sistem pentru Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs dacă dorești să folosești software-ul de scanare cu scannerul tău.

Cerințe sistem pentru Windows

	Laptop & Desktop
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz sau mai mare
RAM	16 GB sau mai mare
Grafice	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) sau mai mare / sau echivalentul unei plăci video AMD
OS	Windows 8 64 Bit (indisponibil în 32 Bit) sau mai mare

Cerințe sistem pentru macOS

	Mac
Procesor	M1 cu 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB sau mai mare
OS	Monterey 12

Cerințe de sistem pentru serviciul web

Recomandat pentru browsere

	Browsere
Calculator	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pentru dispozitive mobile

Tip	Android	iOS
Dispozitiv	Galaxy S7 echivalent sau mai mare	iPhone 7 echivalent sau mai mare
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB sau mai mare	2 GB sau mai mare
AP	Peste Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalare pe Windows

Medit Link este instalat ca un pachet cu programele de achiziție de scanare - Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs.


1. Lansează Medit_LinkSetup.exe.
2. Selectează o limbă pentru instalare.
3. Selectează folderul pentru a instala Medit Link. Citește și acceptă termenii și condițiile de licență și fă clic pe „INSTALEAZĂ”.

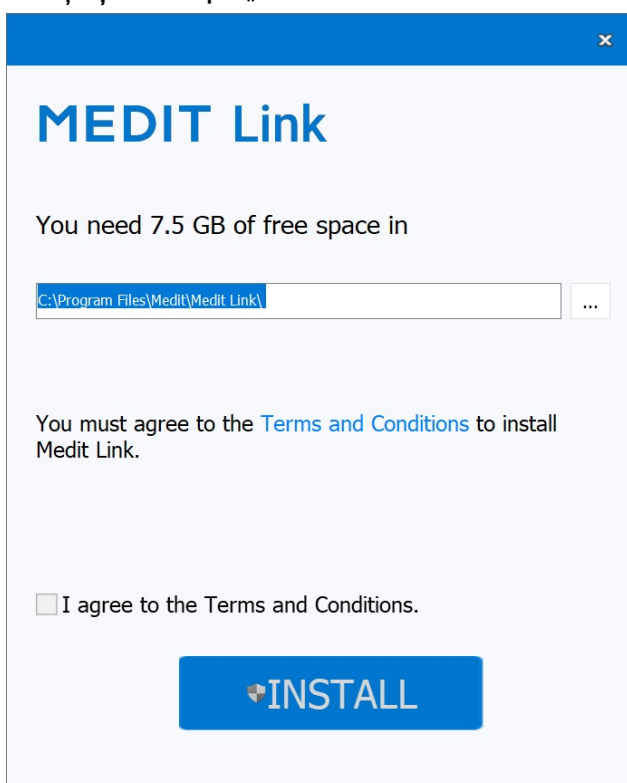

4. Asigură-te că cablul scannerului este deconectat de la computer înainte de a trece la pasul următor. Este posibil ca instalarea să nu continue dacă scannerul este conectat la PC.
5. Programul va fi instalat automat și poate dura câteva minute. Nu opri sau scoate din priză calculatorul până când instalarea nu este finalizată.

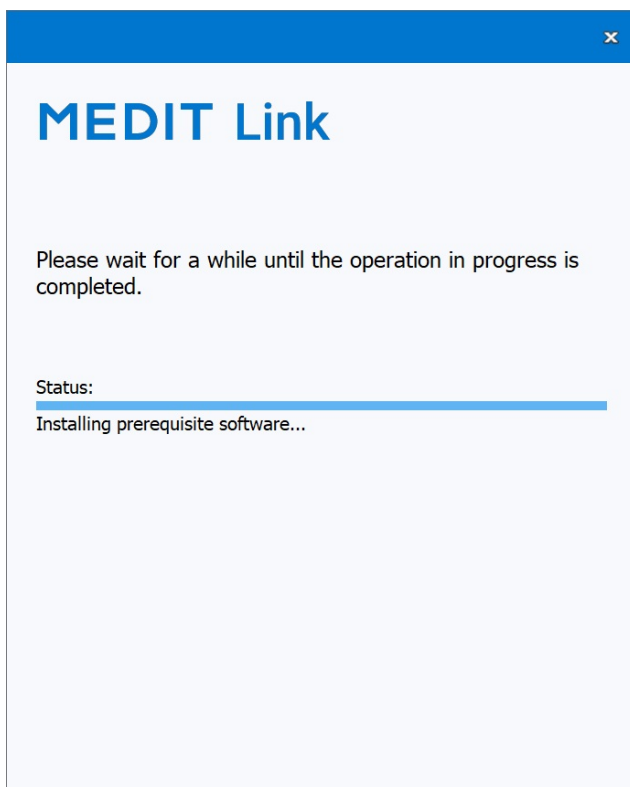

6. Te rugăm să repornești calculatorul după finalizarea instalării. Poți continua fără a reporni calculatorul dacă nu ai scanerul.

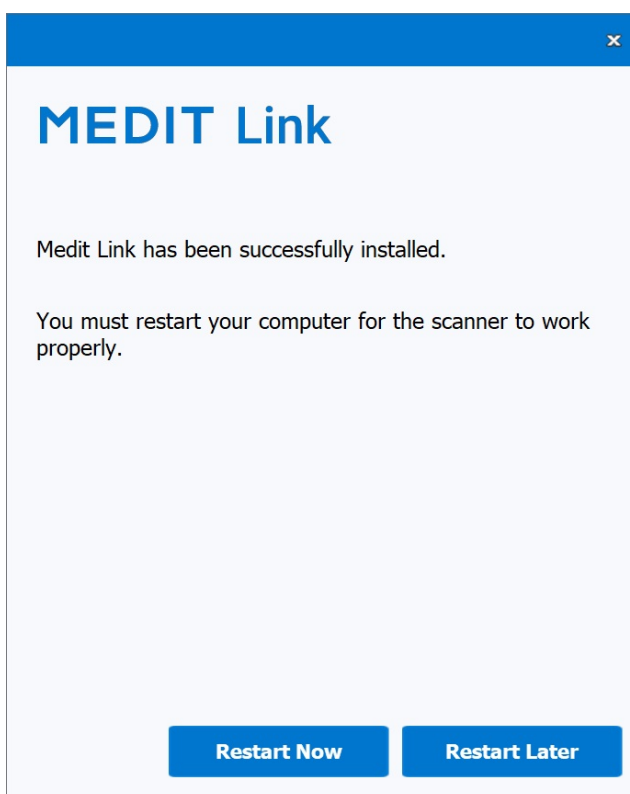


!Notă

Dacă nu repornești calculatorul după finalizarea instalării, este posibil ca scanerul să nu funcționeze corect.


Instalare pe macOS

Medit Link este instalat ca un pachet cu Medit Scan for Clinics.


1. Rulează Medit_Link_x.x.x.pkg și clic pe „Continuă.”

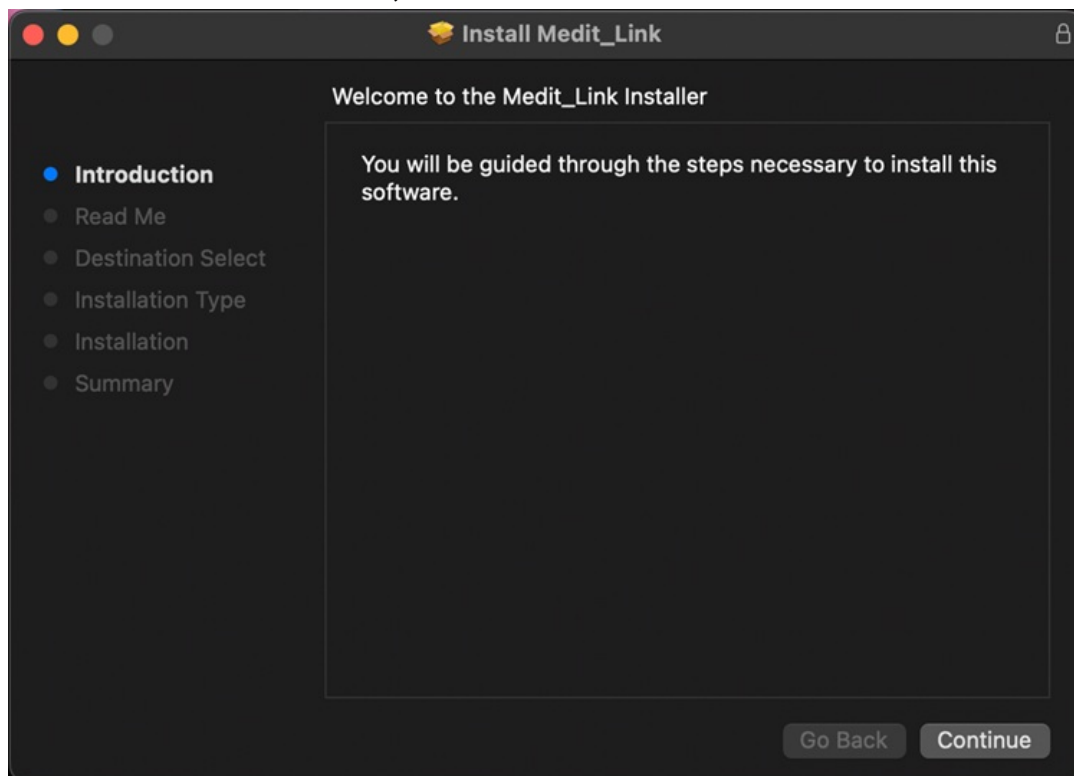


2. Citește Acordul de licență pentru utilizatorul final și fă clic pe „Continuă”.

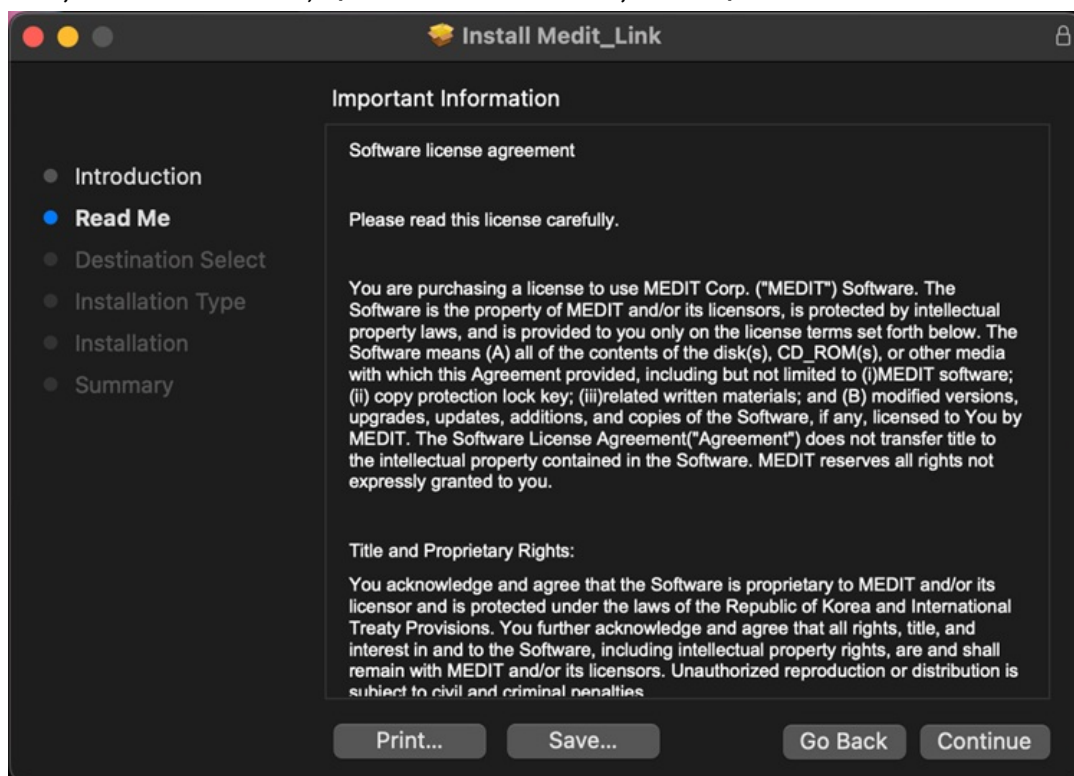

3. Selectează discul pentru a instala și fă clic pe „Continuă”.

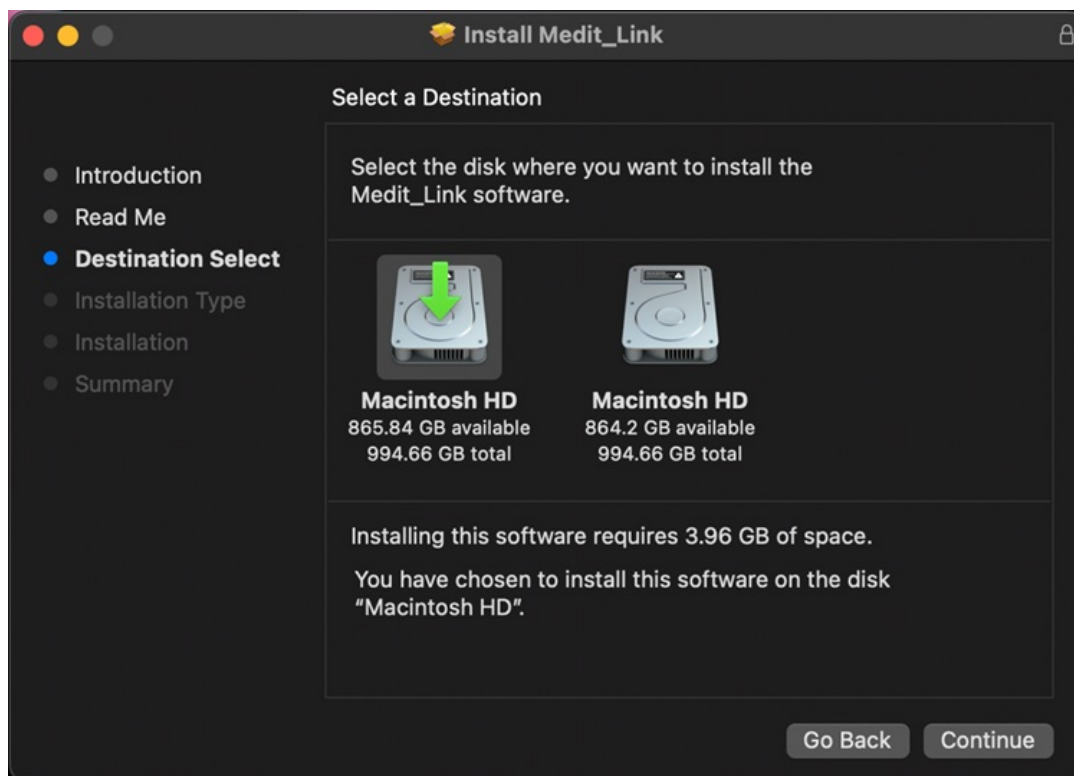


4. Clic pe „Schimbă locația de instalare...” pentru a schimba destinația de instalare.

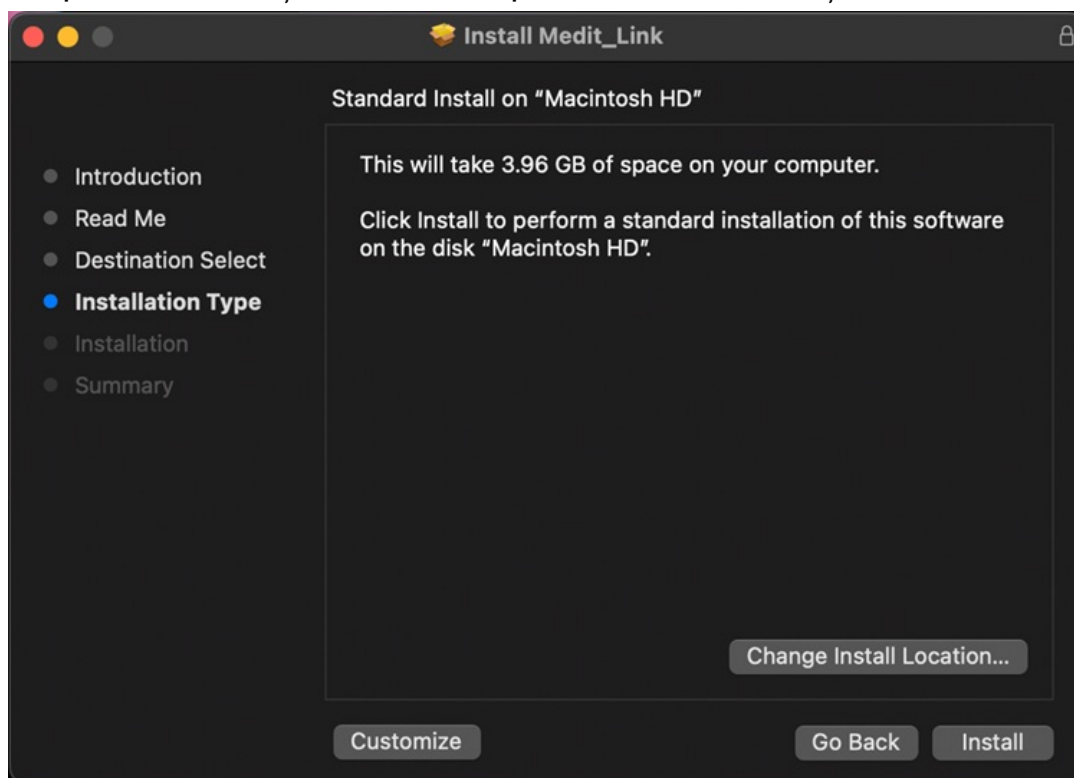


5. Clic pe „Instalează” și introdu parola Mac-ului tău pentru a permite instalarea dacă este solicitată.



6. Așteaptă până când instalarea este finalizată.

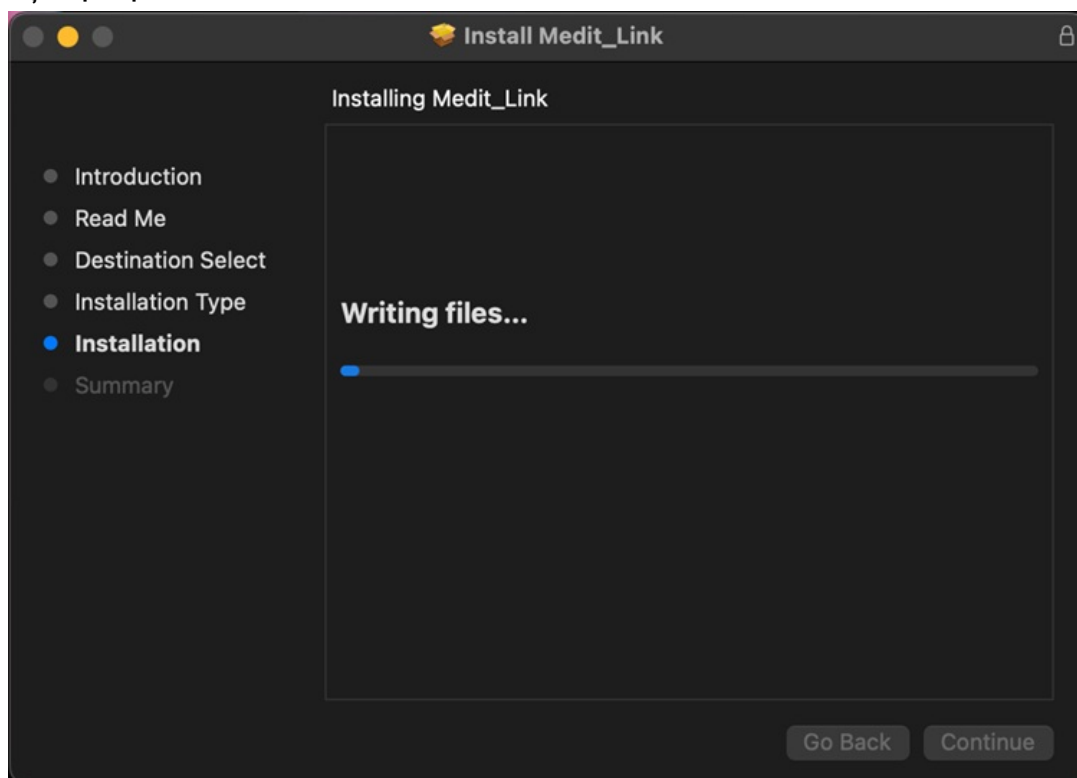

7. Clic „Închide” pentru a ieși din fereastra de instalare.

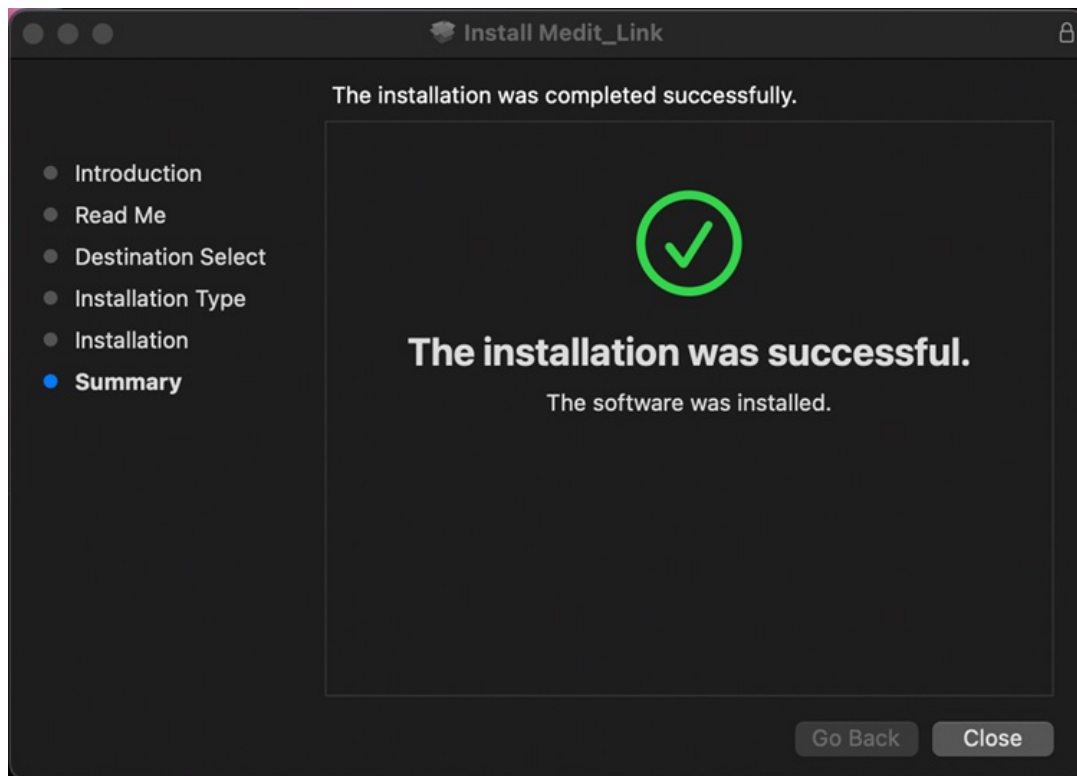

Prezentare generală


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link software. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main area shows a table of cases with filters at the top (All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed) and a search bar. The table lists 18 cases, with the first 10 visible. Each row includes a status badge, case name, patient name, form information (with a thumbnail), last modified date, scanning date, order date, and lab name. A 'Share' button is present for each case.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-

Dashboard

Prezentare generală Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru întreaga activitate desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

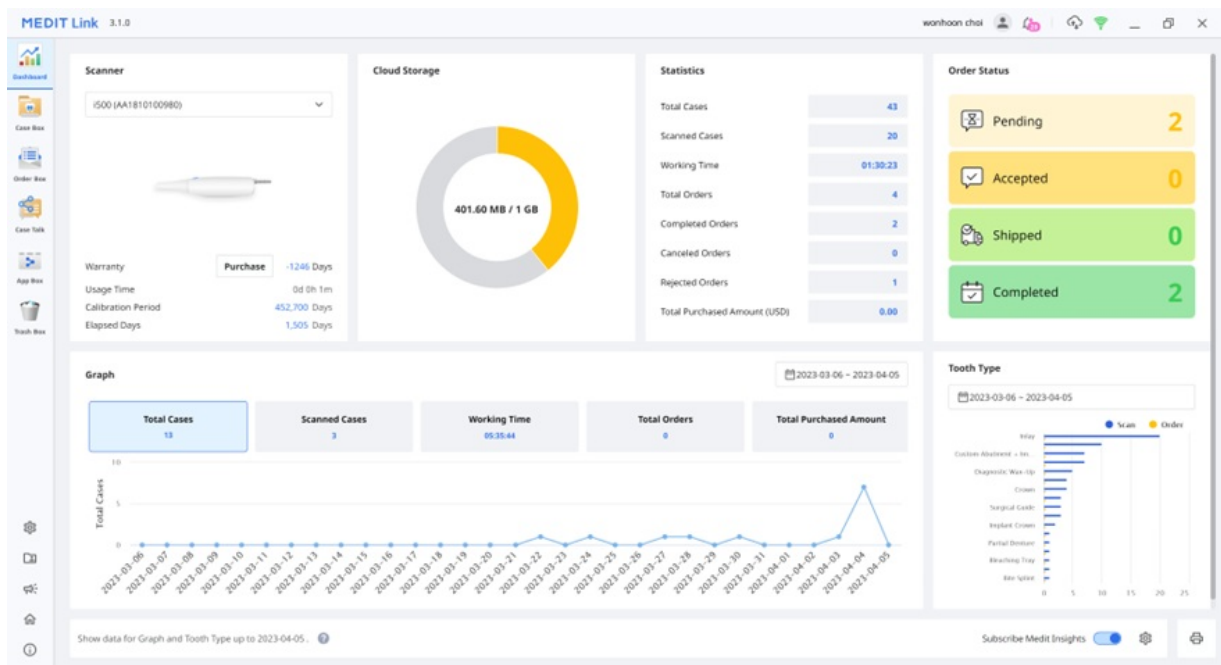

Graficele și diagramele din tabloul de bord prezintă statistici pentru întreaga activitate desfășurată în Medit Link.

Scanner	Furnizează informații despre scanările active, inclusiv garanția, intervalul de calibrare și timpul scurs de calibrare.
Spațiu de stocare Cloud	Afișează capacitatea totală cloud și cantitatea utilizată.
Statistici	Furnizarea de statistici privind cazurile în funcție de statutul postului.
Statusul comenzii	Furnizează statistici privind cazurile în funcție de starea comenzilor.
Grafic	Reprezentarea grafică a informațiilor privind locurile de muncă pe perioade.
Tip dinte	Furnizează statistici privind numărul de scanări și comenzi în funcție de informațiile privind tratamentul.


Medit Insights

Medit Insights este un serviciu de raportare care te ajută să analizezi statisticile de utilizare.

!Notă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Medit Insights

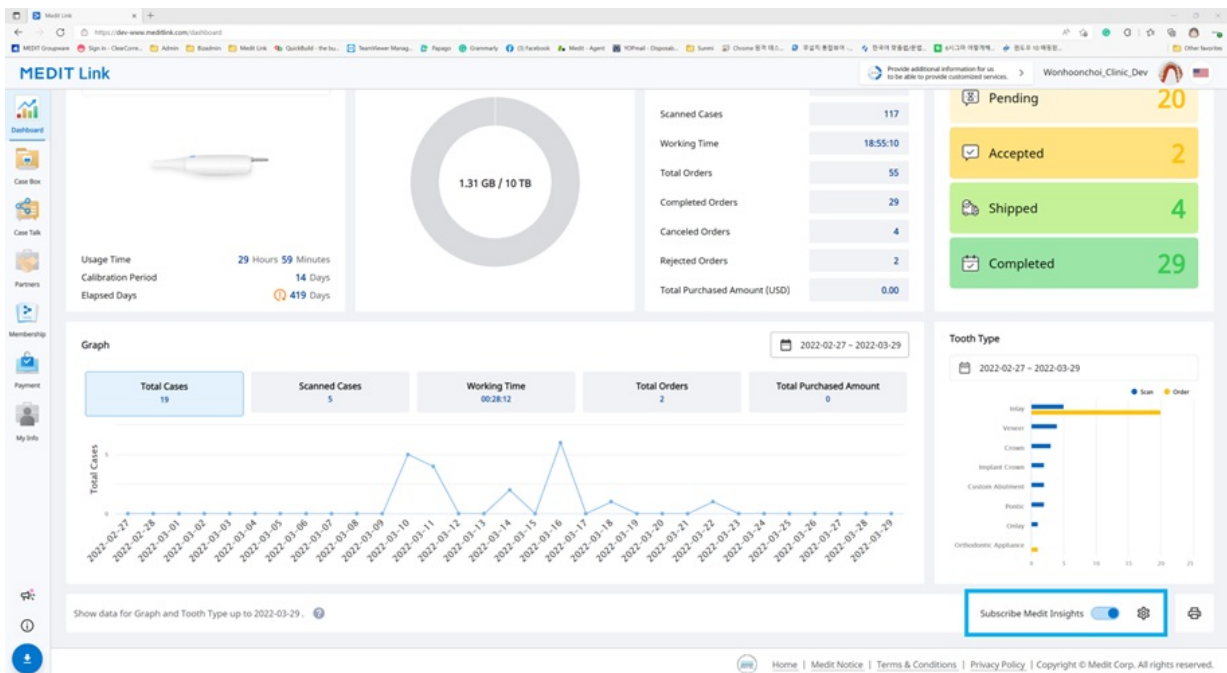

Abonează-te la Medit Insights

Poți primi un e-mail de raportare în a doua zi a fiecărei luni. Nu este necesar niciun alt proces de înscriere. Doar activează „Abonează-te la Medit Insights”.

Dacă nu utilizezi adresa de e-mail pe care ai folosit-o pentru contul Medit Link, poți seta o altă adresă de e-mail pentru a primi Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

În a doua zi a fiecărei luni, vei primi un e-mail cu statistici, așa cum se arată mai jos.

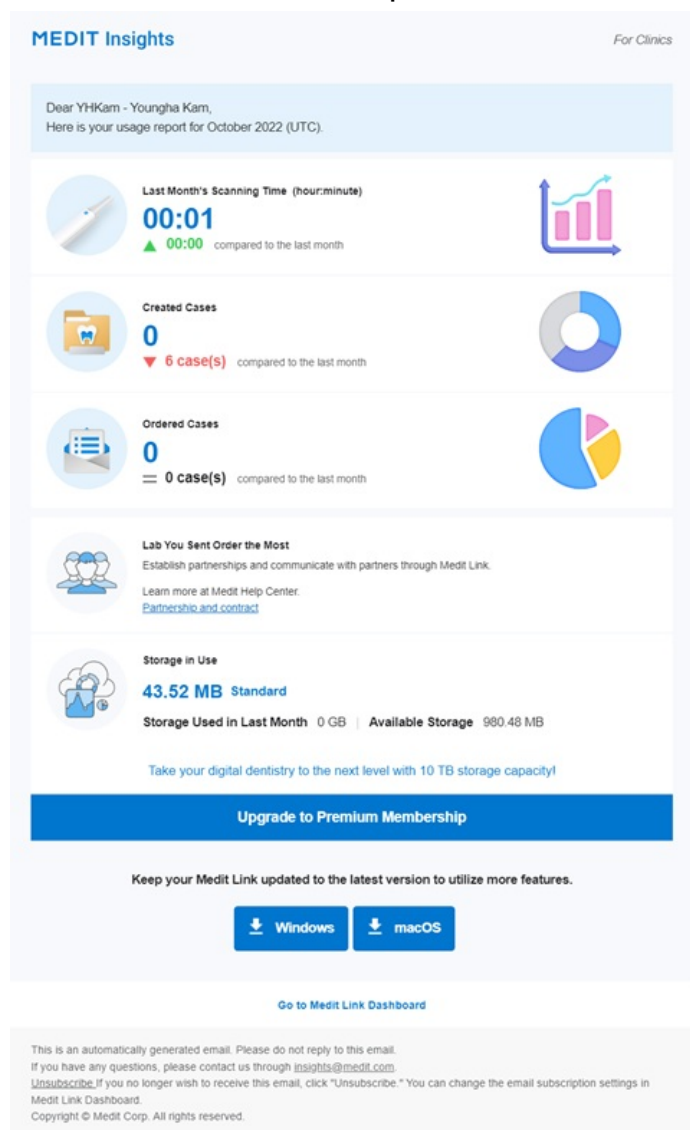


Banner	Medit oferă sfaturi și informații utile aici. * Dacă nu vrei să vezi bannerul, debifează căsuța de selectare a Acordului de marketing și promovare din Informațiile mele > Contul meu.
Informații statistice	Se afișează informații statistice, cum ar fi timpul de scanare, cazurile create, laboratorul cel mai comandat etc.
Descarcă Medit Link	Butonul oferă linkul de descărcare a Medit Link.
Tablou de bord	Toate informațiile statistice se bazează pe informațiile din Dashboard. Poți vedea mai multe detalii în Dashboard.

Dezabonare Medit Insights

Dezactivează „Abonare Medit Insights” în Dashboard sau clic „Dezabonare” în e-mailul primit.

Case Box/Work Box


Case Box (Clinică) sau Work Box (Laborator) afișează toate cazurile pe care utilizatorul le-a creat în aplicația Medit Link. Poți vizualiza fișierele prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat.

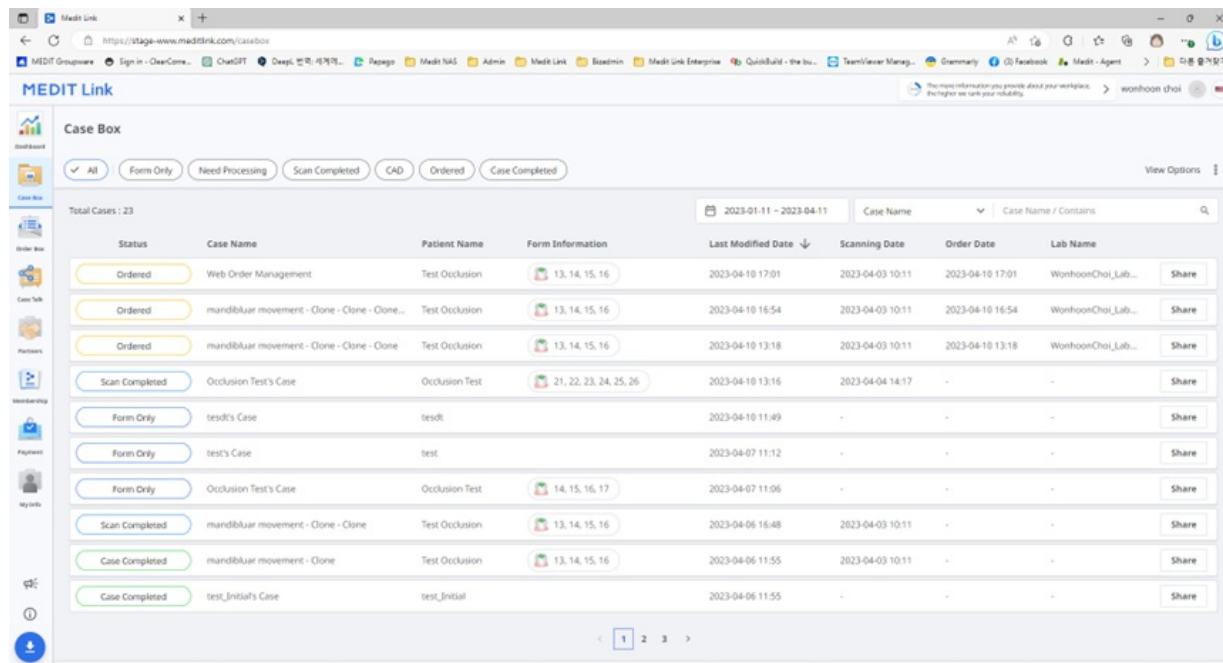

Filtrare caz

Filtreză după statut

Poți filtra cazurile în funcție de statutul acestora.

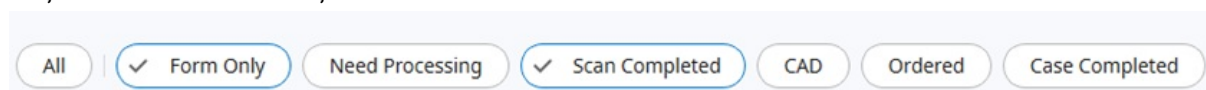

- Utilizatorul poate face clic pe starea pe care dorește să o vizualizeze. Browserul va afișa numai cazurile cu starea aleasă.
- Utilizatorul poate selecta mai multe statusuri simultan.

Următorul tip de statut este furnizat în funcție de tipul de cont:

Case Box (Clinică)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Laborator)	Toate/Doar formular/Necesită procesare/Scanare finalizată/CAD/Finalizat

Filtrare după durată

Poți filtra și afișa cazurile care au fost modificate ultima dată în perioada stabilită.

1. Clic pe filtrul de durată.



2. Selectează intervalul.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează ultimele cazuri modificate astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată cu data de ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 90 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 90 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile din această lună.
- Luna trecută: Afișează cazurile din luna precedentă.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Filtrare după căutare

Poți utiliza capacitățile de căutare pentru a căuta informațiile necesare cu ușurință și rapiditate.


Case Name

Case Name / Contains

Opțiuni de căutare bazate pe contul clinicii/laboratorului:

Case Box (Clinică)	Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator
Work Box (Laborator)	Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă

Detalii caz

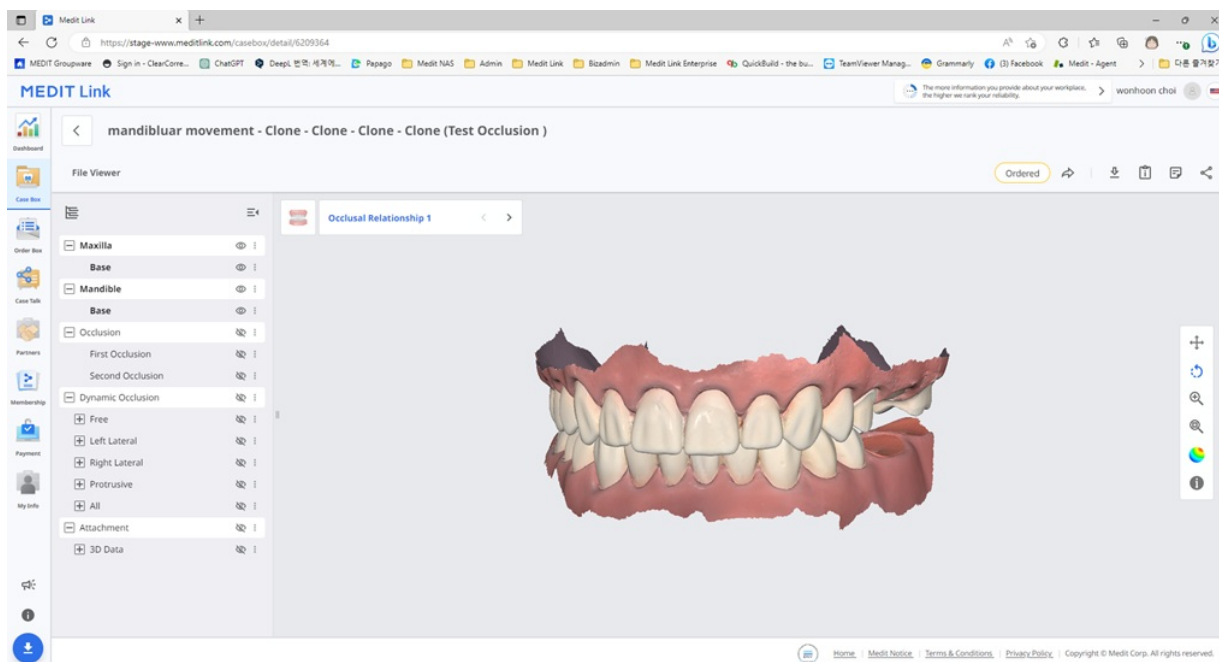

Următoarele instrumente de gestionare a cazurilor sunt furnizate în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la detalii	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Descarcă	Descarcă fișierele din caz pe calculatorul local.
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo & etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser, cum ar fi Chrome, Firefox sau Safari, fără a instala programe suplimentare. Poți partaja linkul în mod liber cu oricine sau doar cu anumite persoane. Se poate seta un cod PIN sau o dată de expirare a legăturii pentru a securiza informațiile private.

Order Box/In Box

Order Box (Clinică) sau In Box (Laborator) afișează cazuri comandate pe aplicația Medit Link.

Detalii comandă

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție).
3	Afișează filele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier
4	Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc.
5	Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete.
6	Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării.


File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate ale comenzii, cum ar fi ID-ul comenzii, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, memo și etichete.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumite persoane pe care le specifici, cu orice persoană care are un link partajat sau cu membrii înregistrați în Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin „Case Talk” în Medit Link App și Medit Link Web.

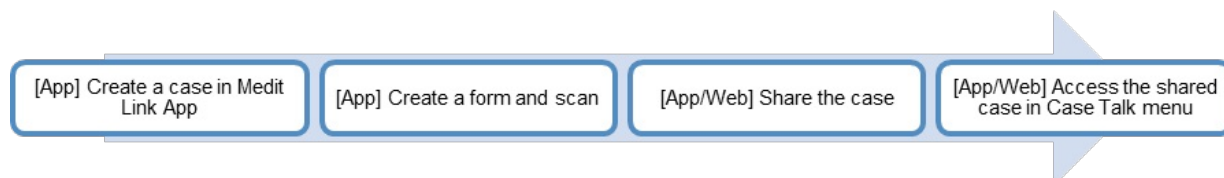

Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.


Crearea unui Case Talk

Poți crea o legătură partajată către un caz care a fost creat în Case Box/Work Box.

1. Găsește un caz pe care dorești să îl partajezi și fă clic pe butonul „Partajează” din dreapta.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	Share
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Selectează fișierele pe care dorești să le partajezi.

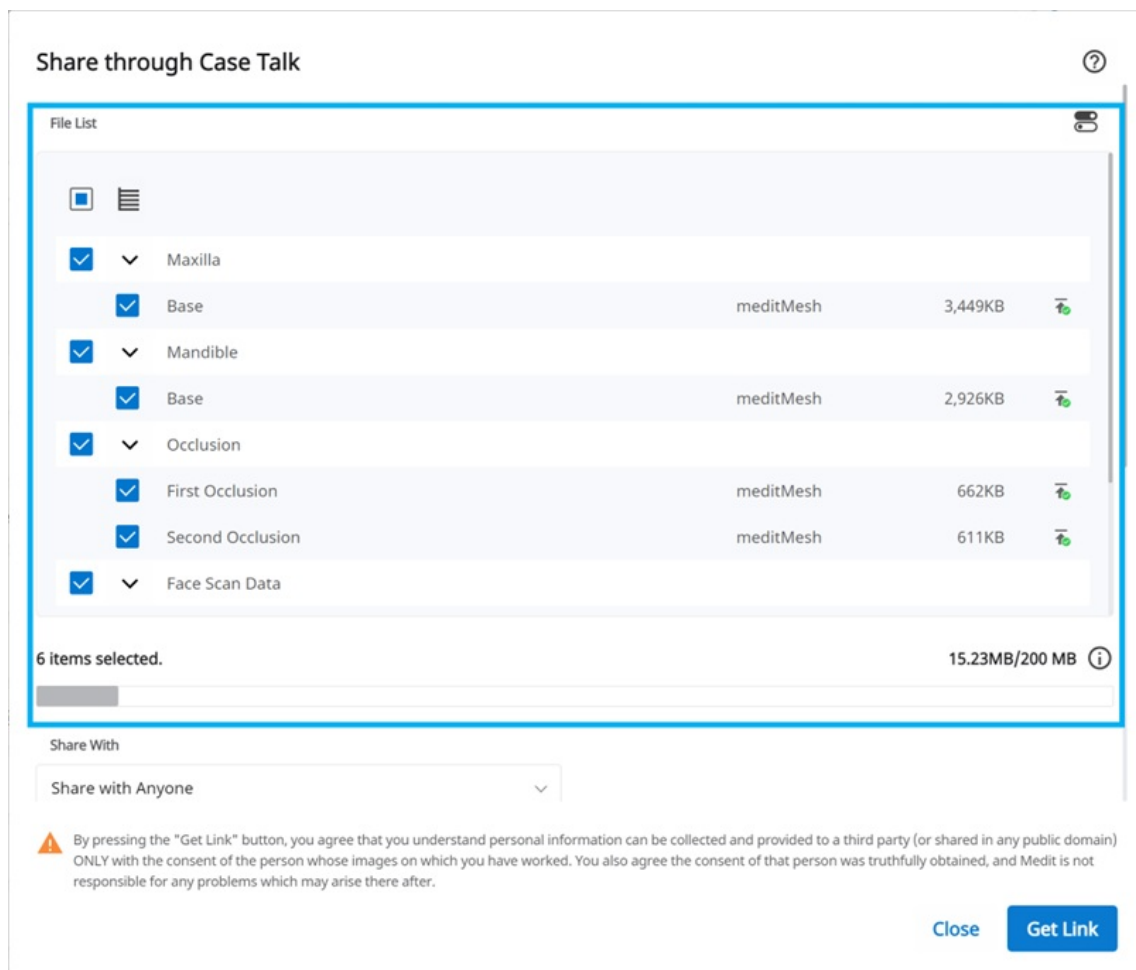

3. Setează tipul de permisiune de partajare și opțiunile de partajare.
4. Clic „Obține link” pentru a crea un link partajabil.

Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.
 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

Partajează cu	- Partajează cu oricine Creează o legătură partajată. Poți partaja fișierele cu oricine. - Partajare cu anumite persoane Creează și trimite un link partajat către anumite persoane.
Partajează prin	Dacă selectezi „Partajează cu anumite persoane”, poți partaja linkul cu anumite persoane în diferite moduri. - Adresă de e-mail - SMS - Parteneri
Data de expirare	Setează data de expirare a linkului. După ce link-ul expiră, persoanele cu care l-ai partajat nu vor mai avea acces la fișiere. Poți prelungi perioada de expirare până la 90 de zile începând de astăzi.
Cod PIN	Setează un cod de acces din 6 cifre pentru a asigura securitatea datelor.
Partajează numele pacientului	Dacă bifezi această opțiune, toate persoanele care au acces la legătură vor vedea numele pacientului.
Acordare permisiune de descărcare	Dacă bifezi această opțiune, toți utilizatorii cu linkul pot descărca fișierele.

Permite comentarii	• Dacă bifezi această opțiune vei putea să comunici prin intermediul link-ului partajat. • Dacă debifezi această opțiune, destinatarul poate doar să vadă comentariile tale, dar nu va putea să le adauge pe ale sale.
Comentariu	Poți lăsa un mesaj în secțiunea de comentarii.

Detalii Case Talk

Poți vedea fișierele în cazul partajat. Următoarele funcții sunt disponibile pe pagina de detalii Case Talk.

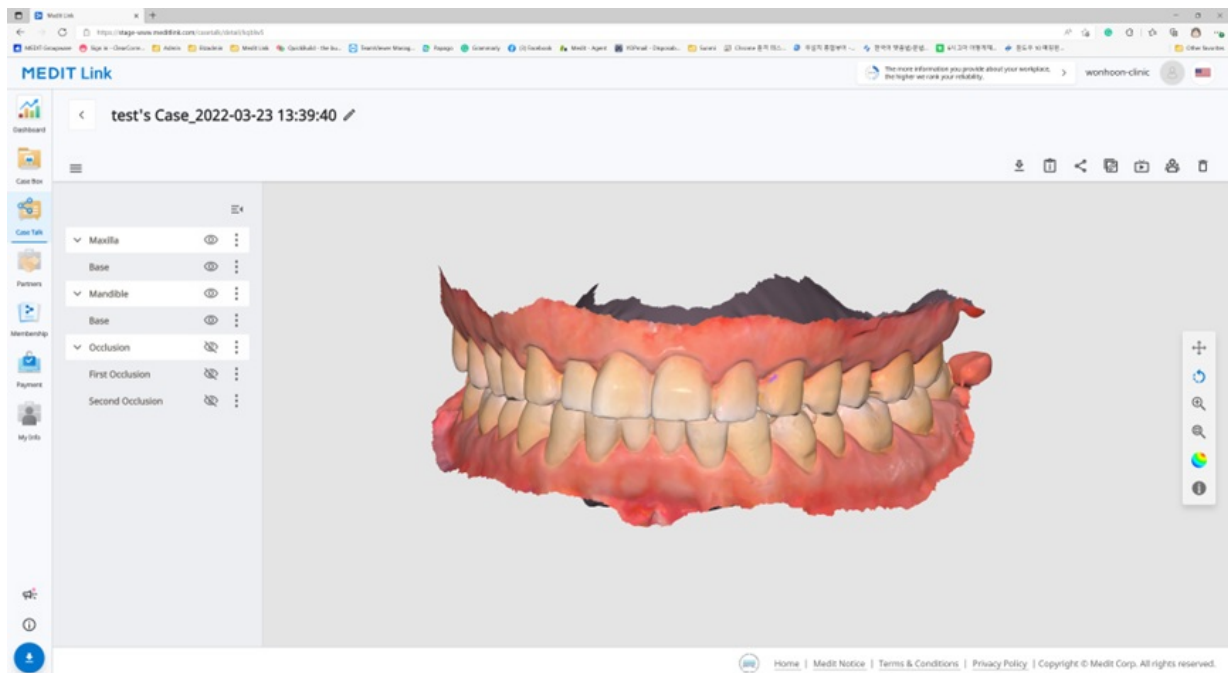

	Descarcă	Descarcă toate fișierele în acest caz pe calculatorul local.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Copiază link	Copiază linkul partajat în clipboard. Linkul copiat afișează fișierele partajate în browserul tău web.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care accesează linkul partajat.
	Șterge	Șterge linkul partajat. Linkul partajat șters nu mai este accesibil.

!Notă


Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Web Viewer

Poți vizualiza datele partajate prin Case Talk într-un browser web.

Este posibil să se comunice cu persoanele care au acces la legătură folosind adnotări și comentarii.

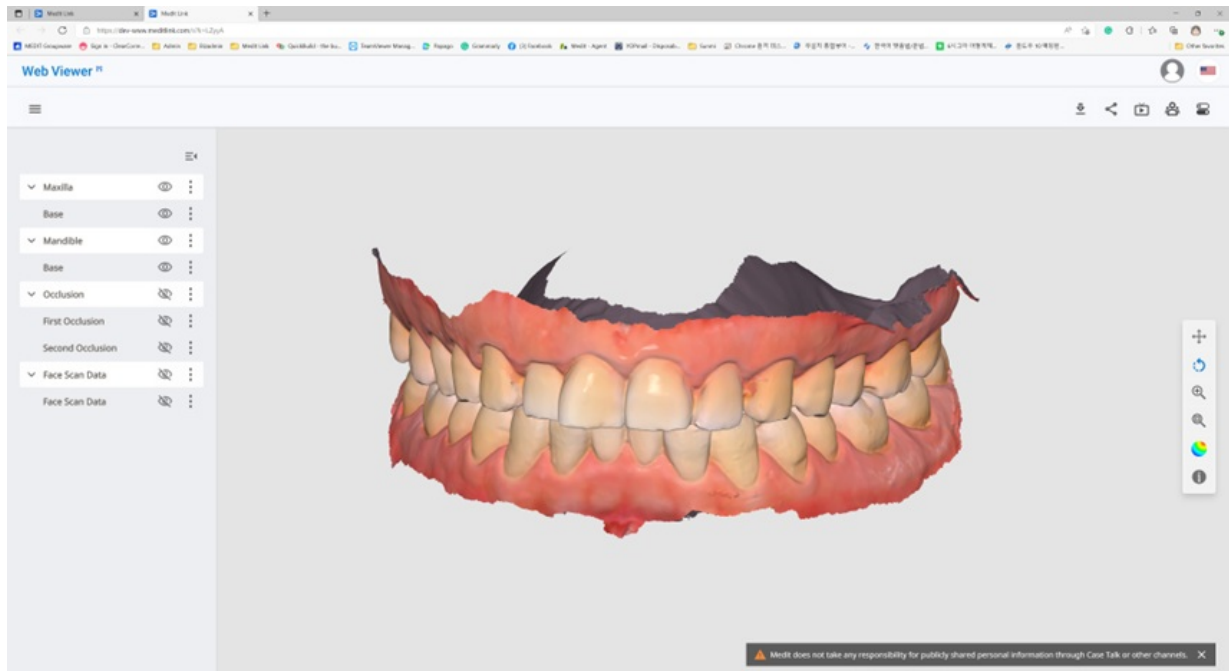

	Descarcă	Descarcă toate fișierele din acest caz în calculator.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care sunt conectați la legătura partajată.
	Etichetare dinte	Schimbă sistemul de etichetare a dinților.


!Notă

Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Adnotare

Poți adăuga adnotări la o locație specificată pe modelul 3D. Oricine are acces la acest link poate vizualiza adnotările pe care le adaugi.

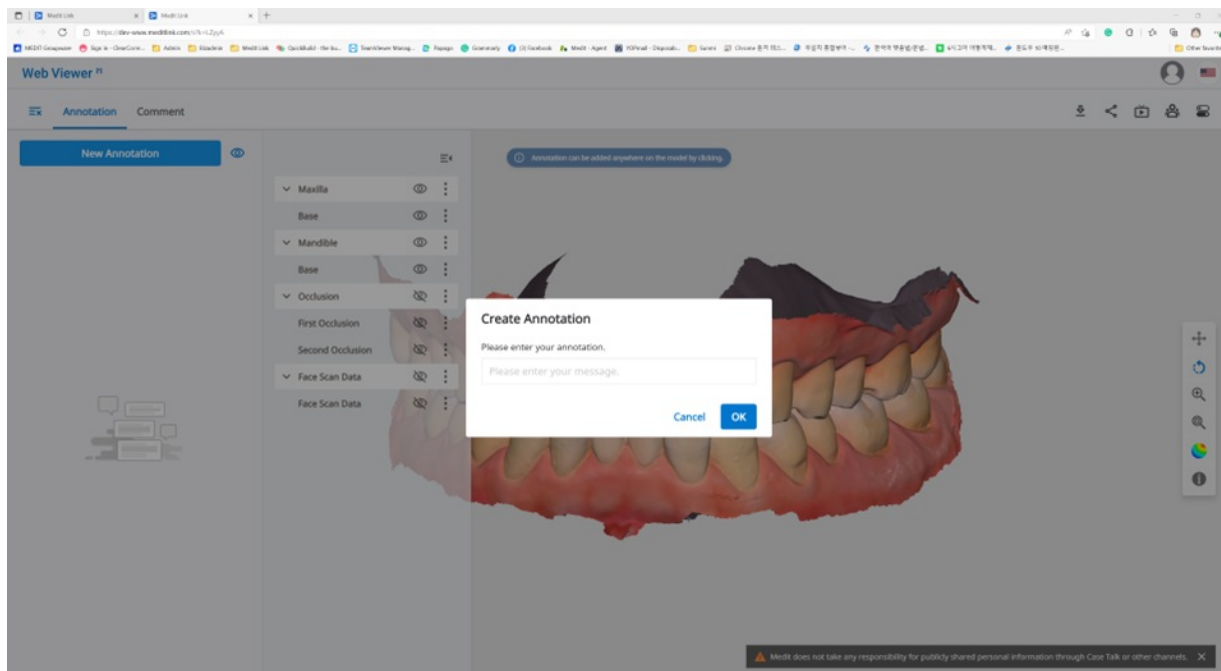

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Adnotare

1. Găsește pictograma de meniu din colțul din stânga sus și selectează fila „Adnotare”. Utilizează butonul „Adnotare nouă” pentru a adăuga o adnotare oriunde pe date cu un singur clic.
2. Introduci mesajul, apoi clic pe „OK” pentru a-l salva.

This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It features the title 'Create Annotation' at the top. Below the title is the instruction 'Please enter your annotation.' followed by a text input field. Below the input field is another instruction 'Please enter your message' followed by a second text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Poți folosi adnotările ca un simplu canal de comunicare. Apasă pe adnotarea creată pentru a introduce un răspuns și apasă „Trimite”.

The screenshot shows a comment thread. At the top, the user 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' is listed with delete and close icons. Below this is a comment titled 'Annotation 1' with a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom of the thread is a reply box with the placeholder text 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Comentarii

Poți comunica cu utilizatorii care au acces la link prin intermediul filei „Comentariu” din meniul Web Viewer.

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- **Comentariu**

Partajarea ecranului în timp real


Poți partaja ecranul în timp real.

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- **Live**

1. Clic pe „Live” pentru a partaja ecranul Web Viewer cu utilizatorii conectați.

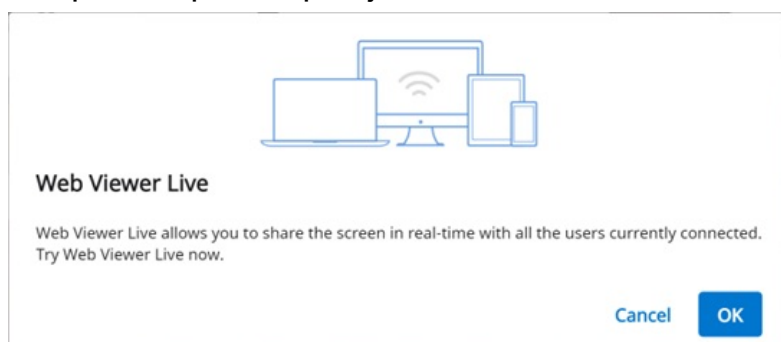



2. Clic pe „OK” pentru a începe partajarea ecranului.
3. Celelalte persoane care au accesat linkul trebuie să accepte partajarea ecranului.
4. Ecranul utilizatorului care a inițiat partajarea ecranului este afișat în sincronizare cu cel al persoanei care a primit cererea.

Arbore de date




Toate datele sunt grupate și afișate în funcție de atributele din arborele de date. Poți afișa sau ascunde datele, ajusta opacitatea și așa mai departe.


Controale arbore de date

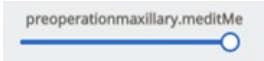Afișează / Ascunde	Clic pe pictograma „ochi” pentru a afișa sau ascunde datele din vizualizare. Controlează vizibilitatea datelor ca grup sau ca fișier individual.
Opacitate	Treci mouse-ul peste un element vizibil pentru a vedea bara glisantă de opacitate. Reglează bara glisantă pentru a modifica transparența datelor tale. 

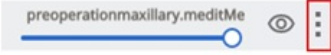Meniu extins	Meniul extins se află în partea dreaptă a fiecărui element al Arborelui de date. Include următoarele opțiuni:  • Arată doar asta: Ascunde toate celelalte date, cu excepția celor curente. • Ascunde: Ascunde datele actuale. • Duplicat: Clonează datele din cazul curent. • Exportă: Salvează datele pe un calculator local. • Șterge: Șterge datele curente sau grupul de date.
--------------	--

Controalele modelului 3D

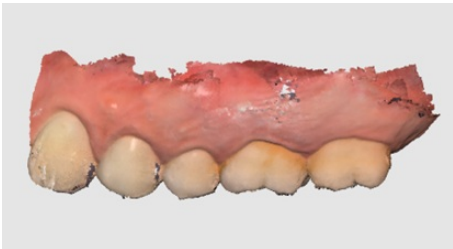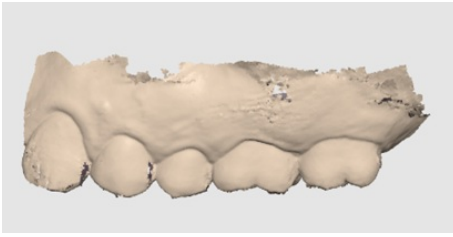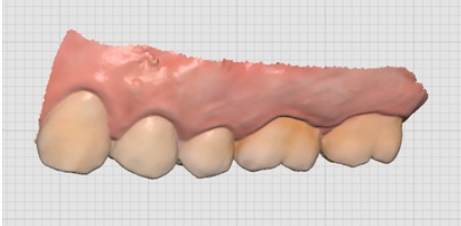	Panoramă	Mișcă modelul.
	Rotește	Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
	Mod afișare model	Afișează datele în culori reale de textură. 
		Afișează datele într-o singură culoare. 
	Setări grilă (mm)	Afișează grila în fundal. 

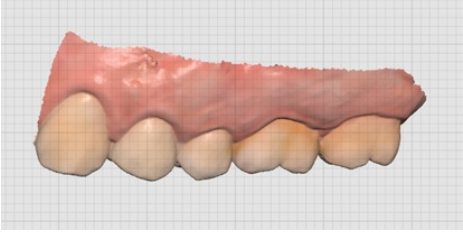		Suprapunere pornită	Suprapune grila peste model. 
		Grilă oprită	Ascunde grila.

Parteneri

Poți să cauți parteneri potențiali pentru a solicita un parteneriat și să vizualizezi lista partenerilor actuali și a partenerilor cu contracte.


!Notă

Serviciile care utilizează Google Maps nu sunt disponibile pe Medit Link China.

Caută parteneri

Poți căuta utilizatorii Medit Link pe baza numelui și/sau a adresei afacerii lor.

În rezultatele căutării, poți trimite o cerere de parteneriat unei organizații cu care dorești să colaborezi.

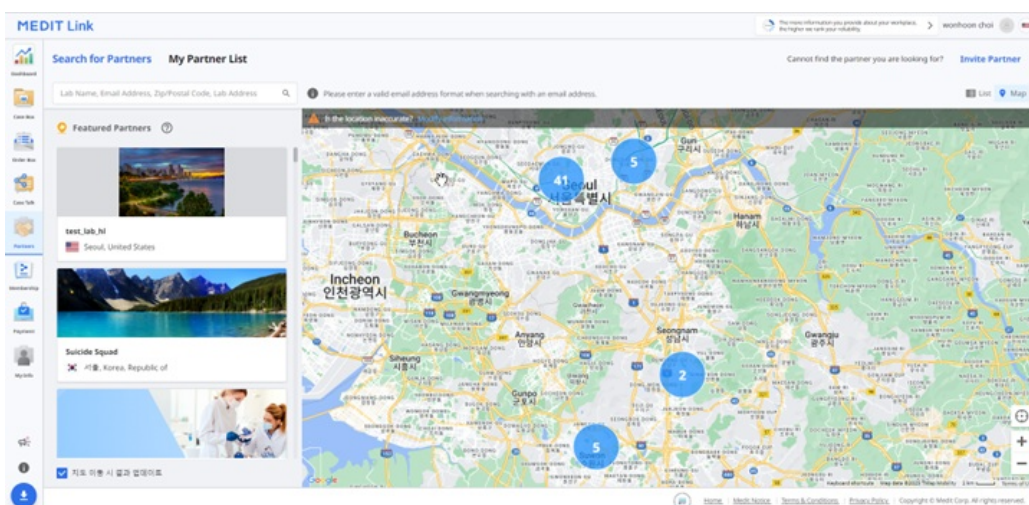


Lista mea de parteneri

Poți revizui parteneriatele și contractele actuale cu toate întreprinderile partenere existente în Lista mea de parteneri.

Prin ce se deosebește un contract de un parteneriat?

Odată ce te-ai asociat cu o afacere, poți solicita să închei un contract cu organizația respectivă.

- În cazul în care partenerul tău acceptă cererea ta de contract, poți trece la plata comenzilor plasate.

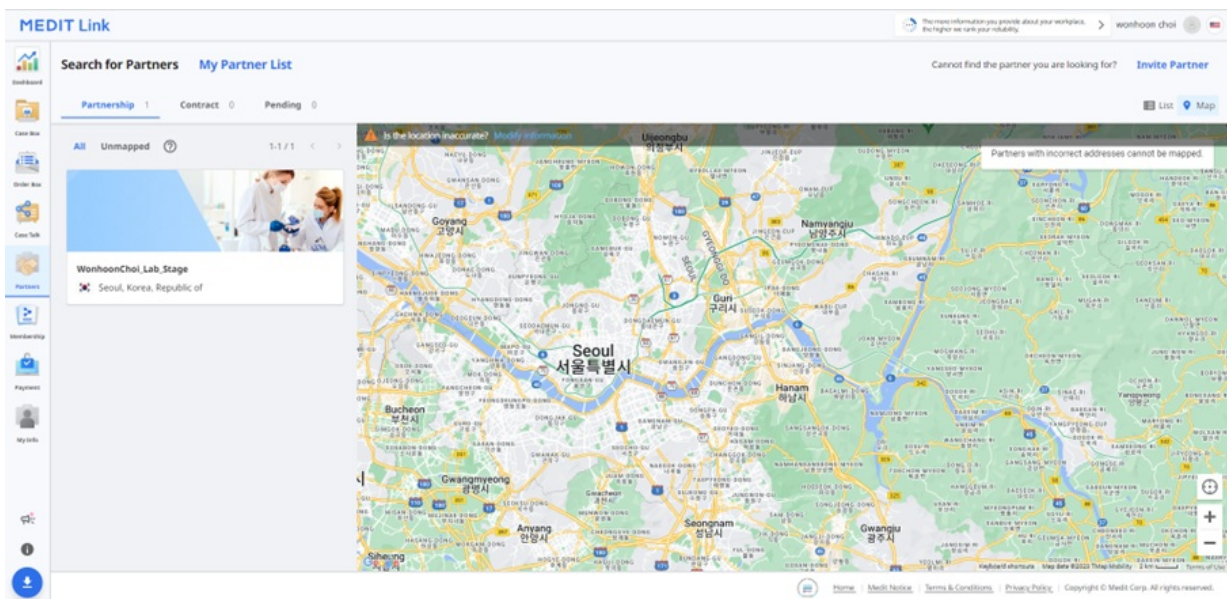

iNotă

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- **Contract**

Invitarea partenerilor

Dacă ai o organizație cu care dorești să lucrezi, o poți invita să se alăture Medit Link. Parteneriatul va fi format automat odată ce aceștia acceptă invitația.

1. Clic pe „Invită partener” în partea din stânga sus a ecranului.
2. Introdu adresa de e-mail a furnizorului cu care dorești să lucrezi și trimite-i o invitație cu o cerere de parteneriat.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Odată ce organizația invitată acceptă invitația și se înscrie la Medit Link, parteneriatul va fi stabilit în mod automat.

Abonament

Politica de afiliere a Medit Link are ca scop stabilirea unui mediu digital mai extins, extinzându-se treptat pentru a oferi diverse servicii bazate pe platforma cloud.

Ne propunem să oferim clienților noștri o experiență mai consistentă și mai personalizată cu noua noastră politică de abonare.

Sunt disponibile două planuri de abonament:

Standard

- Plan standard gratuit pentru toți utilizatorii înregistrați
- 1 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii noi

Premium

- Plan plătit
- 10 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii cu multe cazuri și diverse date
- O lună de probă gratuită

	Standard	Premium
Spațiu de stocare Cloud	1 GB	10 TB
Taxă lunară	Gratuit	\$0.99/lună
* Cloud Storage nu calculează spațiul ocupat de datele neprelucrate.		

Notă


Planurile de abonament vor fi disponibile pe Medit Link China. Poți obține planul Premium gratuit până la lansarea oficială a funcției.

Abonament

The screenshot displays the Medit Link user interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Case Mix, Order Mix, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The main content area is titled 'My Plan' and features an illustration of a person using a smartphone. Below the illustration, the 'Standard' plan is listed as 'Free'. A list of benefits includes: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A blue 'Subscribe' button is at the bottom right of this section. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a donut chart indicating 353.21 MB used out of 1 GB. Below the chart, there are checkboxes for 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB). The footer contains links for Home, Medit Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.


Planul meu

În secțiunea din partea stângă, poți vedea ce plan de abonament ai în prezent. De asemenea, aici poți schimba în orice moment statutul de abonament.

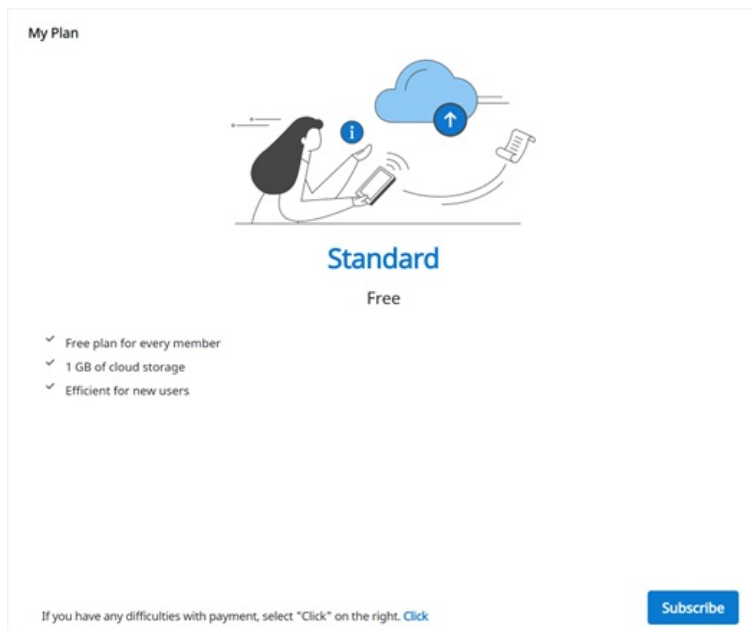

Spațiu de stocare Cloud

În secțiunea din partea dreaptă, poți gestiona stocarea în cloud.

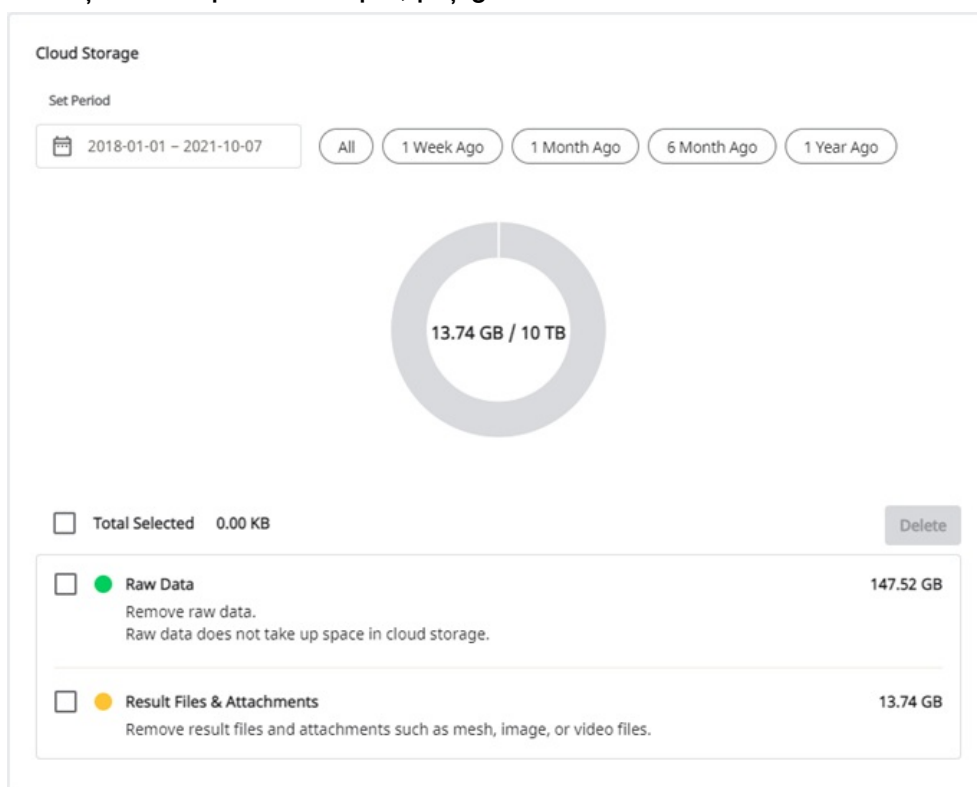

Setează perioada

Setează perioada specifică pentru a șterge datele create în acest interval de timp.

- Toate: Vezi toate fișierele.
- Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare.
- Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună.
- Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni.
- Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.


Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele neprelucrate de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului, etc.
Rezultat & Atașament	Fișierele rezultate și fișierele atașate ocupă spațiu în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu.

Abonează-te

Dacă în prezent ești pe planul Standard sau pe planul Premium cu un cod de răscumpărare, te poți abona la abonamentul Premium.

Plata se realizează prin serviciul Stripe (www.stripe.com).

1. Clic pe butonul „Abonare”.

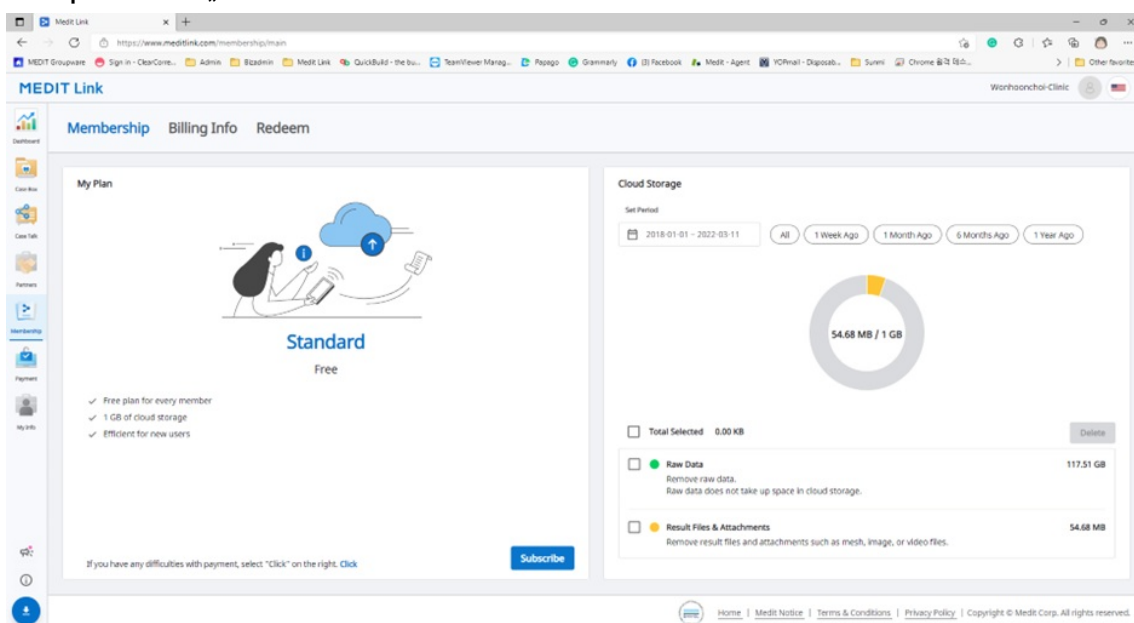

2. Verifică descrierea planului Premium și fă din nou clic pe „Abonare”.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Verifică prețul și condițiile și introdu informațiile necesare pentru plată. Apoi, clic pe „Abonare”.

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by **stripe** | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Plata poate dura câteva secunde. Când ai terminat, vei vedea un mesaj de confirmare.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close

Dezabonare


Te poți dezabona de la abonament în orice moment. După ce te-ai dezabonat, poți folosi în continuare abonamentul Premium pentru zilele rămase din luna plătită. Planul tău va fi schimbat la Standard din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 1 GB. În cazul în care capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi copiate de rezervă, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

1. Clic „Dezabonare”.

The screenshot shows the MEDIT Link web interface. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The left sidebar contains various icons for navigation. The main content area is divided into two sections: 'My Plan' and 'Cloud Storage'. The 'My Plan' section displays the 'Premium' plan at '0.99\$ USD / Monthly' with a list of benefits: 'A subscription plan', '10TB cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial after subscription'. Below this, it states 'The next scheduled payment date is 2021-09-10. View More'. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The 'Cloud Storage' section shows a progress bar for '0.00 KB / 10 TB'. Below the progress bar, there are checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Scan Files' (0.00 KB), and 'Result & Attachment' (0.00 KB). The footer contains links for 'Home', 'Medit Notice', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Corp. All rights reserved.'

2. Clic „Anulează abonarea”.

Cancel Subscription

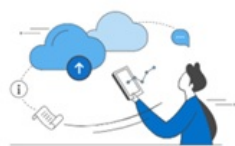

Premium
In Use



Standard
Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

3. Pentru a confirma că nu vrei să te mai abonezi, fă clic din nou pe „Anulare abonament” în noua fereastră pop-up.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. Abonamentul tău a fost anulat.
5. Planul tău va fi schimbat la Standard din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 1 GB. În cazul în care capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi copiate de rezervă, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

Informații facturare

Poți verifica istoricul plăților pentru planurile de abonament, inclusiv o factură pentru fiecare plată. De asemenea, poți adăuga sau modifica metoda de plată, care va fi aplicată începând cu următoarea plată programată.

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa ****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Cum să adaugi o metodă de plată

1. Clic pe „Editează metodă de plată”.

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa ****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Clic pe „Adaugă metodă de plată”.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Introdu informațiile necesare și clic pe „Adaugă”.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Metoda de plată nou adăugată va fi setată ca metodă implicită și va fi utilizată de la următoarea dată de plată.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Cum să schimbi o metodă de plată

1. Clic pe pictograma de meniu extins de lângă metoda de plată pe care vrei să o schimbi în fereastra de dialog privind facturarea.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Clic pe „Stabilește ca implicit” pentru a seta cardul selectat ca metodă de plată implicită.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Răscumpără

Înregistrează codul de răscumpărare furnizat ca parte a promoției. Poți folosi abonamentul Premium împreună cu codul de răscumpărare.

Înregistrează codul răscumpărării

1. Introdu codul de răscumpărare și clic pe „Înregistrare”.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. Citește anunțul și alege „Înregistrare” sau „Aplică” în fereastra de dialog care apare.
 - **Înregistrează-te:** Înregistrează-te pentru a răscumpăra codul. Poți activa și utiliza codul de răscumpărare mai târziu, după înregistrare.
 - **Aplică:** Înregistrează și activează codul de răscumpărare. Reducerea promoțională se aplică imediat.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

Activează codul de răscumpărare

Poți înregistra mai multe coduri de răscumpărare, dar trebuie să îl activezi pe cel pe care dorești să îl folosești.

1. Clic pe butonul „Activează” de lângă codul pe care vrei să îl folosești.
Dacă nu există niciun cod cu statutul „Activ”, cel pe care îl alegi va fi aplicat imediat. În cazul în care un cod este deja activat, statutul acestuia se va schimba în „În așteptare”, iar în locul acestuia va fi utilizat codul pe care l-ai ales. Atunci când codul de răscumpărare actual expiră, cel în așteptare va fi reactivat automat.

2. ⚠️Notă

Doar un singur cod poate fi în starea „În așteptare”.

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Plată

!Notă


Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Plată

Detalii plată (Conturi de clinică & laborator)

Poți verifica istoricul plăților și al tranzacțiilor dintre tine și partenerii tăi prin intermediul paginii Detalii plată.

Informații despre contul de plată (doar pentru contul de laborator)

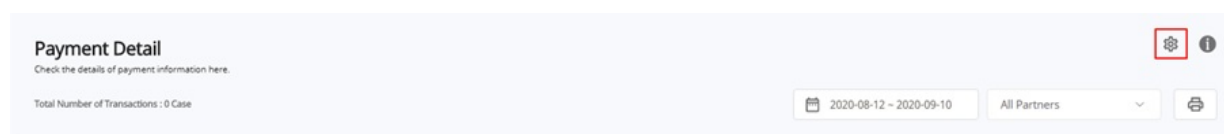

Această funcție este disponibilă doar pentru contul de administrator al laboratorului pentru a le permite să introducă informații pentru a fi plătiți de partenerii tăi.

- Trebuie să introduci informațiile contului tău de plată pentru ca partenerii tăi să poată plasa comenzi prin intermediul sistemului de plată online.

!Notă

Dacă selectezi o țară în care Stripe este acceptat, vei fi direcționat către Stripe făcând clic pe un buton pentru a te înscrie la Stripe.

Poți selecta Coreea de Sud, apoi poți introduce un număr de cont bancar local pentru a primi plata, iar KCP va procesa plata.

Informațiile mele

Contul meu

Aici poți revizui și modifica informațiile pe care le-ai furnizat în timpul înregistrării și poți verifica statutul de membru.

My Account

My Organization

My Scanner

My Price List

Account Information



1

JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address

coldgreentea@naver.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

wonhoonchoi_Lab3

Language

 한국어 (대한민국)

Country

 Korea, Republic of

2

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

Subscribe

Standard

Organization Information

Edit Information >

Organization Name

wonhoonchoi_Lab3

Organizația mea (numai pentru contul de administrator)

Aici poți revizui și edita informațiile despre organizația ta. Această secțiune este disponibilă numai pentru conturile de tip administrator.

My Account

My Organization

My Scanner

My Price List

✓ Address Information

✓ Organization Information

⊖ Additional Information

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *

23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

View Location on Map

1

Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O

2

Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2

Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

1

Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *

02835

City *

Seoul

Country *

 Korea, Republic of

State/Province *

Seoul

3

If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *

+ 82

01026088546

Mobile Phone (Optional)

+ 82

01026088546

Scannerul meu

Poți verifica informațiile despre dispozitivul conectat pentru contul respectiv.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Lista mea de prețuri (doar pentru contul de administrator de laborator)

Poți introduce produsele oferite de laboratorul tău și informațiile despre prețul fiecărui produs.

My AccountMy OrganizationMy ScannerMy Price List

TeethArch

AED (1:1)

All (99/557)Inlay (8/12)Onlay (8/12)Coping (10/17)Denture Coping (5/5)Crown (15/26)Pontic (23/36)Post & Core (3/4)Veneer (8/11)Implant Crown (12/53)Custom Abutment (2/3)Surgical Guide (1/1)Offset Substructure (4/5)Partial Denture (0/7)Diagnostic Wax-Up (0/1)Custom Abutment + Implant Crown (0/159)Custom Abutment + Coping (0/45)Post & Core + Crown (0/100)Post & Core + Coping (0/60)

	Name	Type	Method	Material	Price
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	\$6.03
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

!Notă

- Odată ce închei un contract cu un partener, acesta poate comanda produsele tale pe baza acestei liste de produse și a prețului.
- Dacă ai încheiat doar un parteneriat cu partenerul tău, Medit Link nu acceptă comenzi care necesită informații despre preț.

Alt meniu

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit informații

Poți obține diverse informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale ale Medit, cum ar fi Medit Academy, Medit Academy YouTube și Medit Help Center.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Descarcă Medit Link App

Poți descărca cea mai recentă versiune a programului de instalare de pe internet. Acest meniu este util atunci când pierzi programul de instalare furnizat în pachetul produsului sau când ai un program de instalare depășit.


49

iNotă

Medit Link se actualizează automat atunci când ai o conexiune la internet.

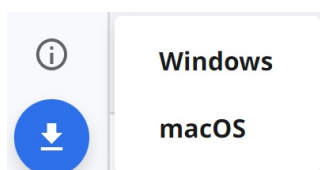

Prezentare generală

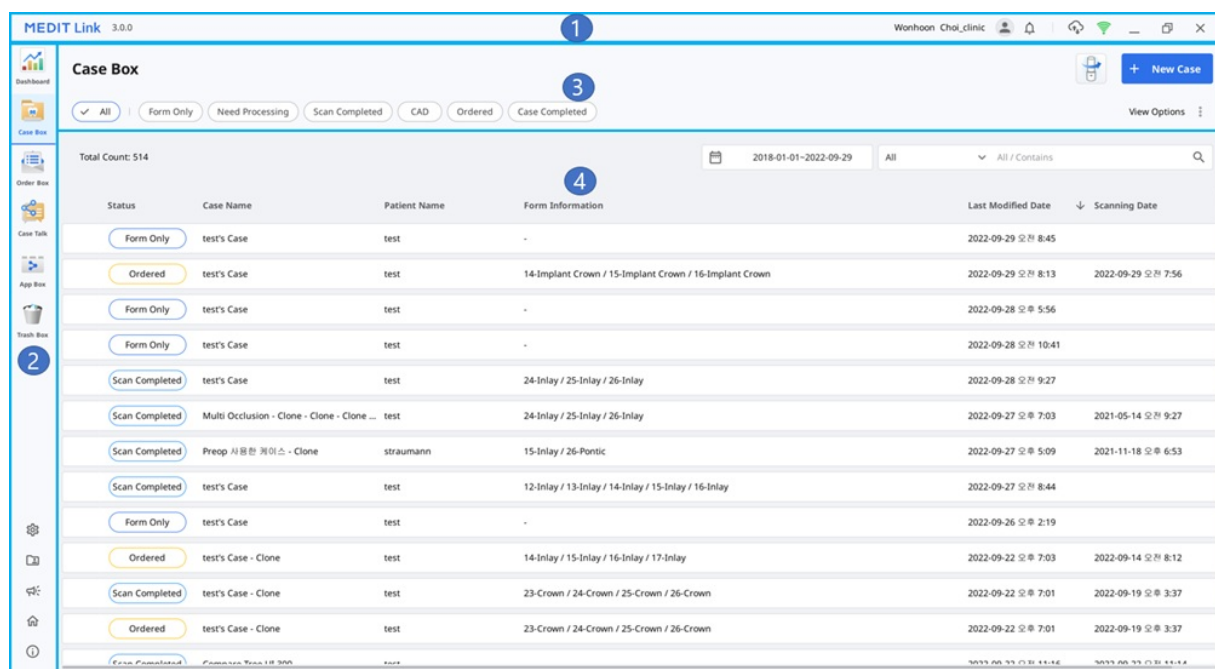

1	Bară de titlu	Consultă Medit Link App > Bara de titlu pentru informații detaliate.
2	Meniu	Consultă Medit Link App > Meniu pentru informații detaliate.
3	Instrumente și funcții	Consultă Medit Link App > Vizualizare fișier și Medit Link App > Vizualizează opțiuni pentru informații detaliate.
4	Lista cazurilor	Consultă Medit Link App > Filtrare și Căutare pentru informații detaliate.

Prezentare generală Box

	Flux de lucru	Contul clinicii	Cont de laborator
Etapă 1	Crează cazuri	Case Box: Creează cazuri și caută și vizualizează cu ușurință cazurile cu diverse opțiuni de filtrare și căutare. Cu carcasa creată, poți să te conectezi direct la programele de scanare și la programele CAD pentru a lucra la ele.	
Etapă 2	Comandă/gestionează cazurile	Order Box: Gestionează cazurile comandate. Sunt prevăzute funcții pentru gestionarea procesului, de la comandă până la finalizarea cazurilor.	In Box: Gestionarea cazurilor de comenzi primite. Sunt furnizate funcții pentru gestionarea procesului de acceptare, respingere, expediere și finalizare a cazurilor.


Etapa 3	Lucrează la scanare/CAD		Work Box: Gestionează cazurile care au fost transmise din In Box sau pe care le-ai creat. Poți să te conectezi direct cu programele de scanare și cu programele CAD pentru a lucra cu ele.
Etapa 4	Partajează cazuri	Case Talk: Partajează cazurile create cu restricții, fără restricții, cu anumite persoane, sau cu alți membri înregistrați pe Medit Link.	
Etapa 5	Lucrări suplimentare sau adiționale	App Box: Utilizează o varietate de aplicații care îți completează fluxul de lucru al stomatologiei digitale. Poți descărca și instala Medit sau aplicații terțe.	
Etapa 6	Șterge/Restabilește cazuri	Trash Box: Vizualizează, restaurează sau șterge definitiv cazurile din coșul de gunoi.	

Tabelul de mai jos rezumă casetele disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.

Tip cont		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Conturi clinică	Administrator	O	O	X	X	O	O	O
	Membru	O	X	X	X	O	O * Numai funcția de restabilire	O
Cont de laborator	Administrator	X	X	O	O	O	O	O
	Membru	X	X	X	O	O	O * Numai funcția de restabilire	O

Bară de titlu

Bara de titlu oferă acces rapid la funcții precum starea rețelei, sincronizarea în cloud și notificările.

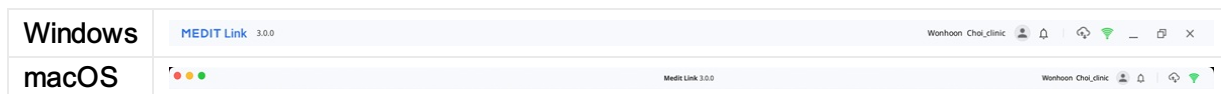

Informațiile mele

Informațiile mele conțin informații de bază despre utilizator, cum ar fi imaginea de profil, numele organizației, adresa de e-mail și numele de utilizator.

De asemenea, oferă o opțiune de deconectare și o scurtătură către pagina Contul meu din MEDIT Link Web.

The image shows a 'My Information' form. It has a profile picture placeholder (1) and three text input fields: 'Organization Name' (2) with the value 'Wonhoonchoi_Clinic_Dev', 'Email Address' with the value 'wonhoon.choi@medit.com', and 'Name' with the value 'Wonhoonchoi_Clinic'. At the bottom right, there are three buttons: 'Close', 'Log Out' (3), and 'Edit' (4) with a right arrow.

1	Afișează imaginea de profil.
2	Afișează numele organizației, adresa de e-mail și numele de utilizator.
3	Deconectează-te de la contul curent.
4	Accesează MEDIT Link Web în timp ce ești conectat cu contul curent. Poți vizualiza, edita și gestiona informațiile despre cont pe care le-ai introdus atunci când te-ai înregistrat.

Notificări

Poți vedea notificări legate de contracte, comenzi și procese de lucru.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Bifează caseta pentru a afișa numai mesajele necitite. |
| 2 | Clic pe orice notificare pentru a accesa instantaneu cazul sau pagina web aferentă. |

Manager sincronizare caz

[illegible]

Total cazuri / Cazuri selectate	Verifică numărul de cazuri toate/selectate care trebuie să fie încărcate.
Încarcă tot	Încarcă toate cazurile în cloud.
Anulează tot	Anulează toate cererile de încărcare.
	Încarcă cazul în cloud.
	Anulează încărcarea cazului.
	Încearcă din nou să încarci cazul.

Total cazuri / Cazuri selectate	Verifică numărul de cazuri toate/selectate care trebuie să fie descărcate.
Descarcă tot	Descarcă toate cazurile pe calculator.
Anulează tot	Anulează toate cererile de descărcare.
	Descarcă cazul pe calculator.
	Anulează descărcarea cazului.



Încearcă din nou să descarci cazul.

Starea rețelei

Medit Link îți permite să folosești toate funcțiile fără probleme atunci când ești conectat la o rețea.

Pentru a te ajuta să verifici starea conexiunii de rețea în timp real, în bara de titlu este afișată pictograma de stare a rețelei.

Dacă conexiunea la rețea nu este bună, este posibil să apară următoarele restricții:

- Unele funcții, cum ar fi comandarea unui caz, crearea unui caz, partajarea prin Case Talk și sincronizarea în cloud, vor fi restricționate.
- Performanța generală a serviciului poate fi redusă din cauza impactului mediului de rețea.

În acest caz, poți intra în modul offline pentru a efectua sarcini de bază, iar apoi să folosești funcțiile care necesită internet odată ce ești conectat.

!Notă

Simbolul rețelei indică viteza de răspuns între zona curentă și AWS (Amazon Web Service). Nu se referă la viteza rețelei, așa că, uneori, poate afișa starea ca fiind slabă sau proastă, chiar dacă viteza rețelei este suficient de mare.


În cazul în care celălalt proces utilizează aceeași rețea, viteza poate fi slabă sau proastă, iar performanța generală a Medit Link poate fi proastă. În acest caz, te rugăm să nu partajezi rețeaua cu alte procese.

De exemplu, funcția „Încarcă date neprelucrate” este o parte uriașă a procesului de rețea. Dacă simbolul arată o stare slabă sau proastă, mergeți la Setări > Încarcă date neprelucrate și dezactivează „Încarcă automat”.

Meniu

Dashborad


Poți vizualiza statisticile pentru întreaga activitate desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

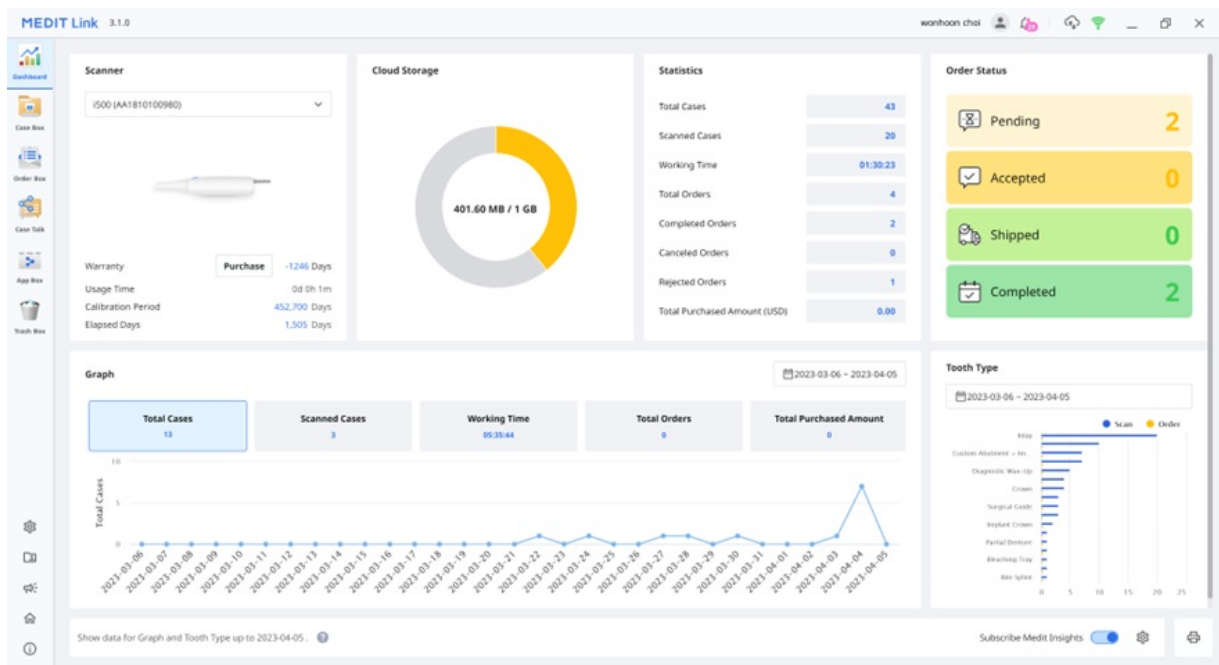

Notă

Accesează [Medit Link Web > Dashboard](#) pentru mai multe informații despre tabloul de bord și Medit Insights.

Case Box/Work Box

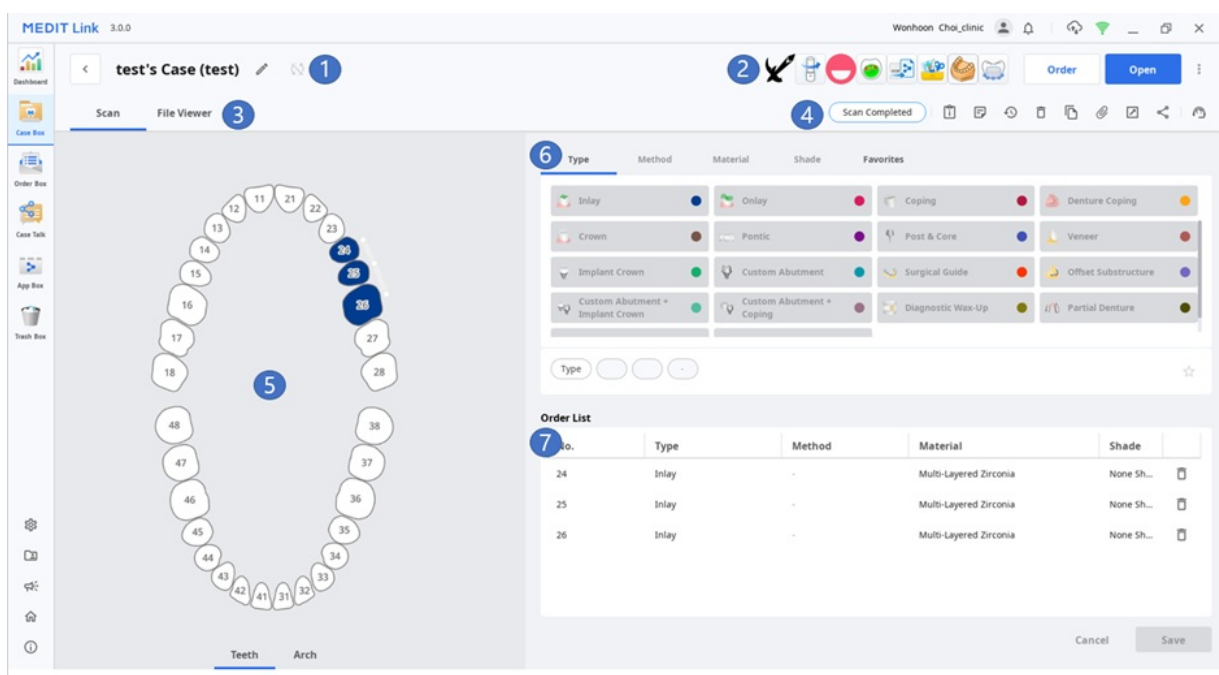

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Furnizează principalele caracteristici disponibile: Butoane de comandă/scanare (Deschide)/comandă și pictograme de aplicații.
3	Afișează filele disponibile: Formular, CAD și Vizualizare fișier.
4	Afișează funcțiile de gestionare a cazurilor și a dosarelor:
5	Afișează interfața de înregistrare a formularului pentru programul CAD selectat.
6	Furnizează informații privind tipul/metoda/materialul/nuanța pe care utilizatorii le pot alege pentru numărul de dinți selectat.
7	Afișează tipul/metoda/materialul/informațiile privind nuanțele aplicate dinților selectați.

File în Case Box/Work Box

Formular	CAD	Vizualizare fișier
Fila Formular oferă o interfață de utilizare pentru introducerea informațiilor de bază pentru scanarea lucrărilor, cum ar fi tipul, metoda, materialul pentru numerele dinților și opțiunile de scanare. Informațiile pe care le introduci sunt transmise programului de scanare conectat și sunt utilizate ca informații de comandă atunci când se plasează o comandă la partenerul tău.	Fila CAD oferă o interfață pentru a seta opțiunile CAD. Informațiile pe care le configurează sunt transmise programului CAD conectat.	Vizualizează fișierele de rezultate generate de programele de scanare și CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D achiziționate sau atașate.


Funcții în Case Box/Work Box

Sunt prevăzute următoarele funcții în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la detalii	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo & etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Istoricul cazului	Furnizează informații detaliate despre istoricul cazului. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close

	Șterge	Șterge cazul. Nu poți șterge cazurile comandate sau cazurile care au fost create offline.
	Clonează	Creează un duplicat al cazului curent în Case Box. Toate datele vor fi copiate în cazul clonat. Această funcție ajută la replicarea informațiilor de tratament pentru același pacient sau la efectuarea unei comenzi suplimentare cu aceleași informații sau fișiere.
	Atașează	Atașează fișiere în diverse formate.
	Exportă	Exportă fișierele de scanare sau de rezultate CAD pe calculatorul local. Poți alege formatul de fișier preferat atunci când exporti fișiere. Filele exportate pot fi utilizate pentru lucrări ulterioare în software CAD și CAM.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser precum Chrome, Firefox sau Safari fără a instala programe suplimentare. Poți partaja linkul în mod liber cu oricine sau doar cu anumite persoane. Se poate seta un cod PIN sau o dată de expirare a legăturii pentru a securiza informațiile private.
	Trimite solicitare de asistență	Accesează o pagină a Centrului de asistență Medit pentru a trimite o cerere de asistență.

Order Box/In Box

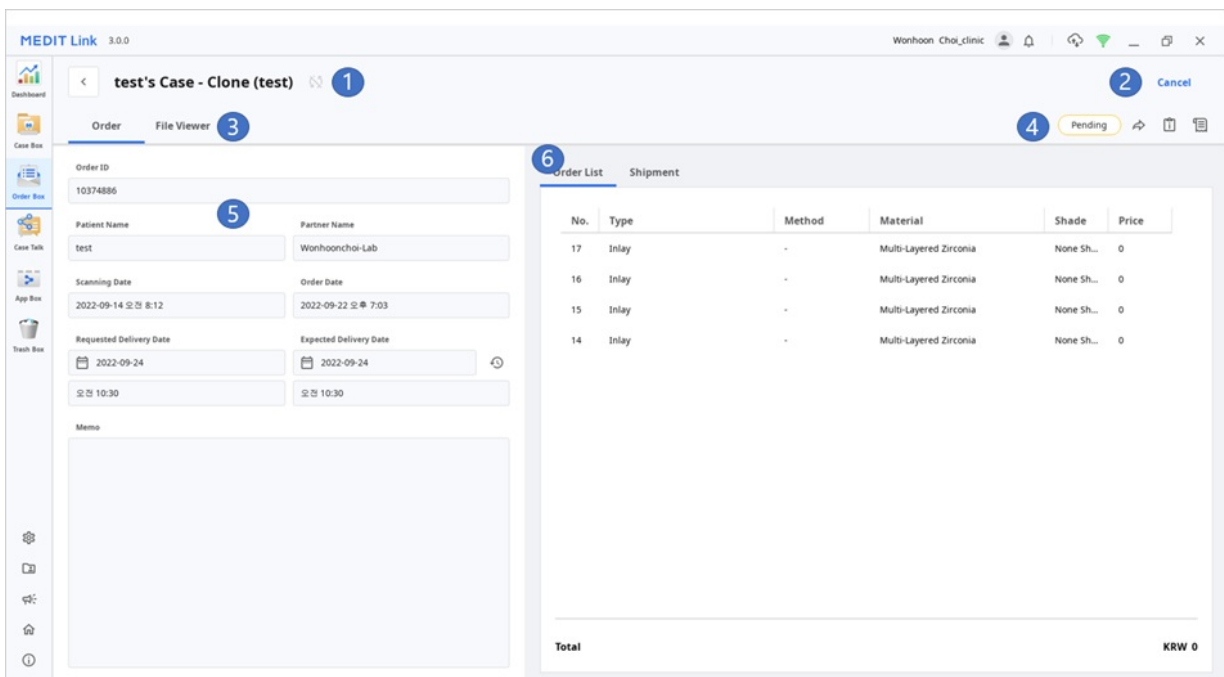


The screenshot displays the MEDIT Link 3.0.0 interface. The top bar shows the user 'Wonhoon Choi_clinic'. The main area is titled 'test's Case - Clone (test)'. The 'Order' tab is selected, showing a form with fields for Order ID (10374886), Patient Name (test), Partner Name (Wonhoonchoi-Lab), Scanning Date (2022-09-14 오전 8:12), Order Date (2022-09-22 오후 7:03), Requested Delivery Date (2022-09-24 오전 10:30), and Expected Delivery Date (2022-09-24 오전 10:30). A table on the right lists order items:

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
17	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
16	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

The total price is KRW 0.

- 1 Afișează numele cazului și numele pacientului.
- 2 Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție).
- 3 Afișează fișele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier

Descarcă aplicațiile disponibile de la Medit Apps și Partners App pentru a crea aparate dentare, pentru a analiza datele de scanare, pentru a te ajuta în timpul unei consultații sau pentru a-ți eficientiza procesul de lucru.

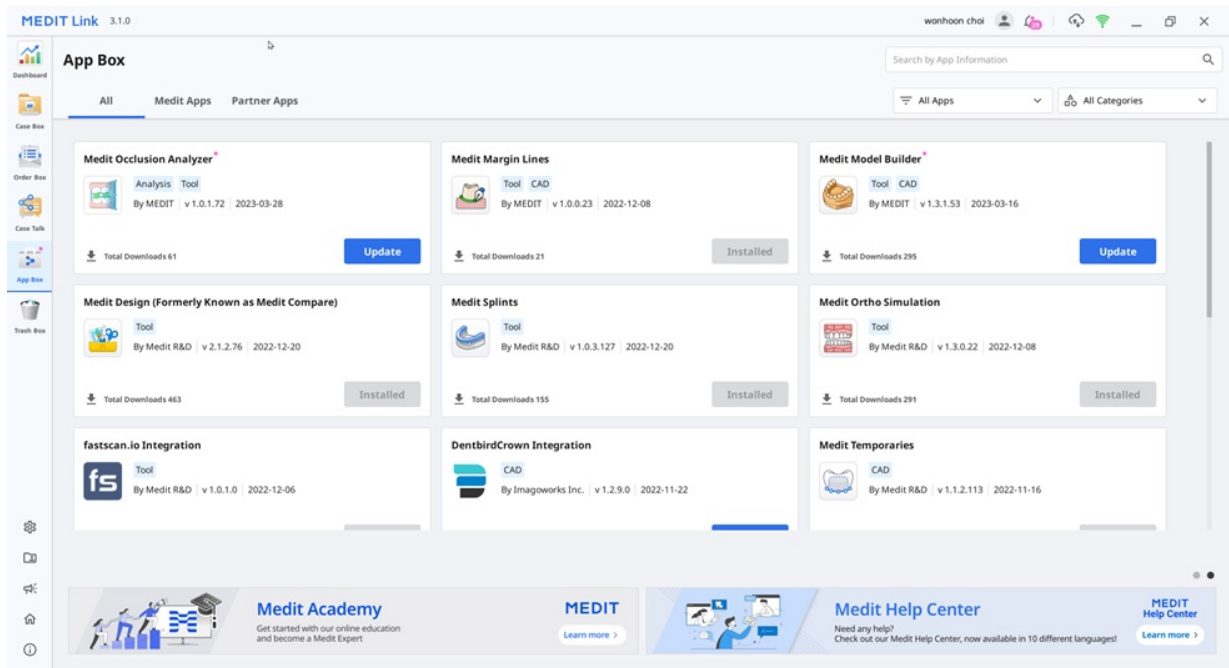


Trash Box

Trash Box stochează temporar cazurile șterse. Orice caz din Trash Box poate fi restaurat sau șters definitiv.

⚠️ Atenție

Datele șterse din Trash Box vor fi șterse definitiv de pe calculator și de pe server și nu vor putea fi recuperate.

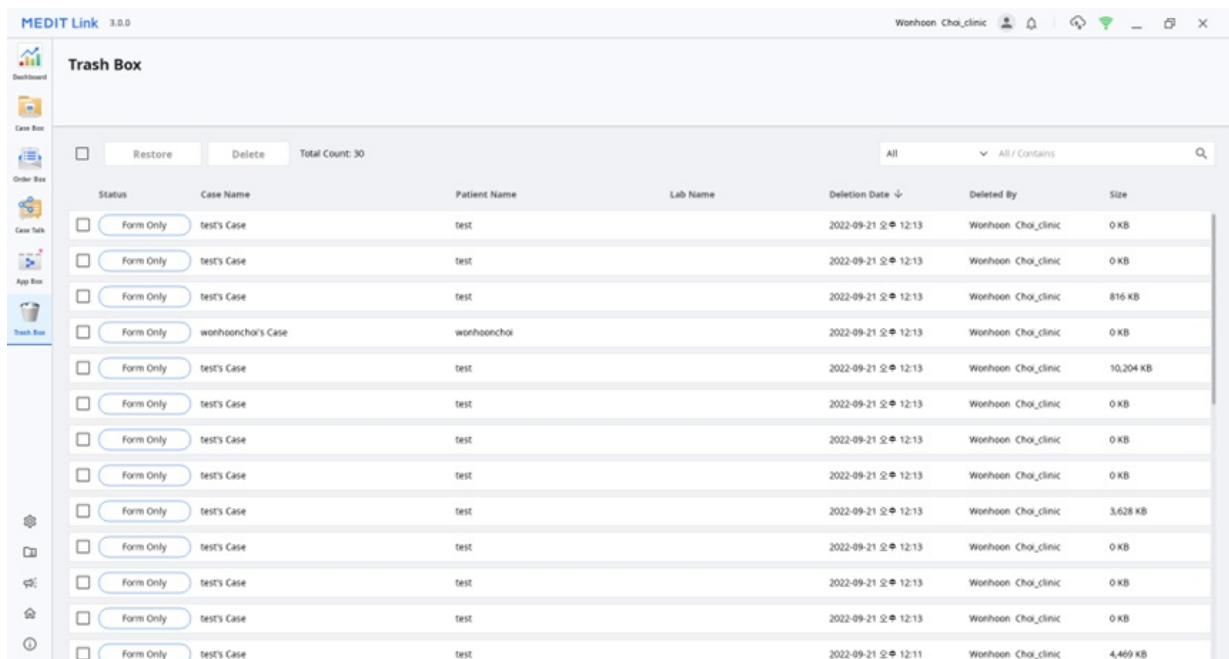

Setări

Consultă [Medit Link App > Setări](#) pentru informații detaliate despre fereastra Setări.

Managementul pacientului

Poți adăuga, edita, șterge sau fuziona pacienți în fereastra de gestionare a pacienților.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

Buttons: **Delete** **Merge Patients** **+ New Patient**

Search: Search / Contains

Patients with No Cases: ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gitt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	테스트				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

[Close](#)

Adaugă pacient nou

1. Clic „Pacient nou”.

New Patient

Patient Name*

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

2. Completează informațiile necesare în fereastra de dialog Pacient nou, apoi clic pe „Salvează”.

Șterge pacienți

Notă

Poți șterge un pacient numai atunci când nu mai există cazuri pentru pacient.

1. Selectează pacientul pe care dorești să îl ștergi din listă.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press "Delete" to remove patients from the system.

AB Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.J.Abument2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarboby				0	2019-08-28	2019-08-26	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abument Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	suljadrklf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. Clic „Șterge”.

Combină pacienți

Poți unifica toate cazurile mai multor pacienți într-un singur pacient.

1. Selectează din listă pacienții pe care vrei să îi unifici.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press "Delete" to remove patients from the system.

AB Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9/Scan_CAMOrder_test2				8	2020-09-18	2020-09-18	/	
☐	5-9/Scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	/	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	/	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	/	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	/	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	/	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	/	
☒	grr				1	2020-09-15	2020-09-15	/	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	/	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	/	

Close

2. Clic „Combină pacienți”.
3. Selectează pacientul țintă în care vrei să fuzionezi toate cazurile.
4. Toate cazurile sunt comasate în pacientul țintă, iar informațiile despre pacient sunt păstrate.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Clic „Aplică” pentru a continua cu fuzionarea.

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Mergi la Medit Link Web

Vei ajunge pe Medit Link Web sub contul cu care ești conectat în prezent.

Medit informații

Poți obține diverse informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale ale Medit, cum ar fi Medit Academy, Medit Academy YouTube și Medit Help Center.

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

Setări

General

Oferă opțiuni pentru configurarea generală a sistemului.

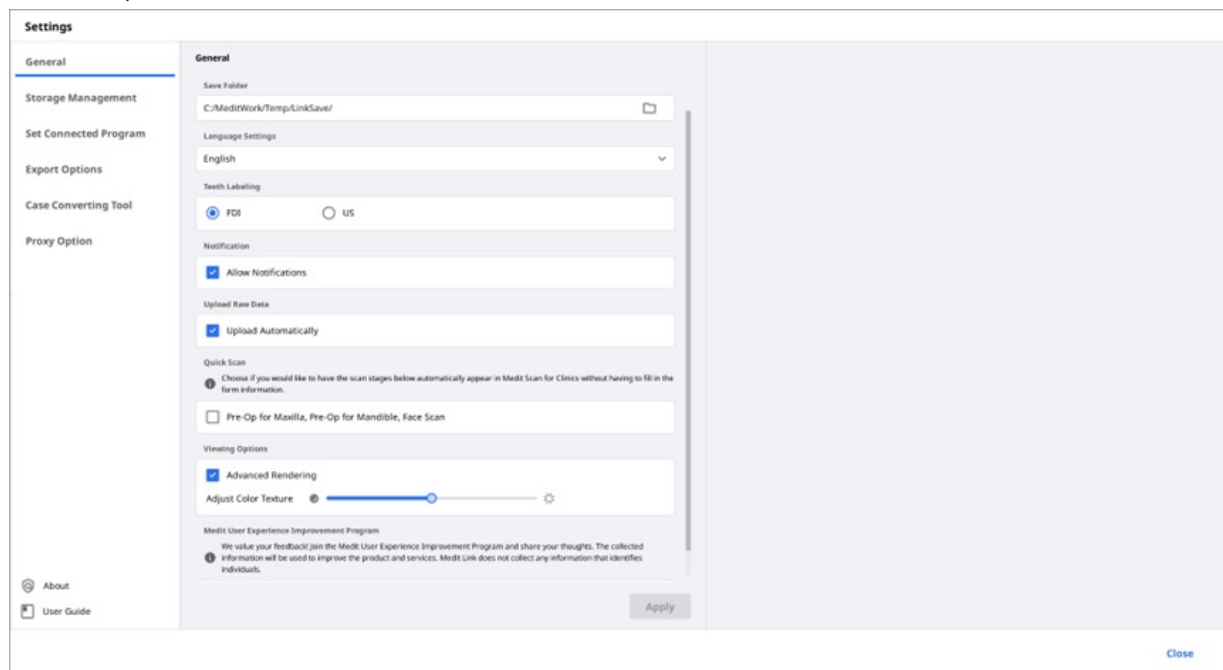

Salvează folder-ul	Specifică un dosar pentru a stoca rezultatele datelor generate în Medit Link și în programele conectate.	
Setări de limbă	Selectează limba pentru program.	
Etichetarea dinților	Selectează un sistem de etichetare a dinților între FDA și SUA.	
Notificări	Atunci când este bifată, vei primi notificări pentru actualizările programului.	
Încarcă date neprelucrate	Atunci când este bifată, datele neprelucrate sunt încărcate automat în cloud. Ajută la salvarea datelor originale și la efectuarea unei scanări fără întreruperi atunci când se utilizează Medit Link cu același cont pe un alt calculator. Salvarea în cloud a datelor originale se aplică numai datelor dobândite în Medit Scan for Clinics.	
Scanare rapidă	Alege dacă vrei ca etapele de scanare de mai jos să apară automat în Medit Scan for Clinics fără să fie nevoie să completezi informațiile din formular. • Maxilar pre-operator • Mandibulă pre-operator • Scanare față	
Opțiuni de vizualizare	Redare avansată	Atunci când este bifată, modelul 3D este afișat într-o redare mai vie și mai realistă.
	Ajustează textura culorilor	Ajustează luminozitatea modelului 3D. * Culorile rezultate pot fi ușor diferite față de Medit Link atunci când deschizi aceleași date cu un alt software.


Programul de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit

Alătură-te Programului de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit.

- Utilizăm informațiile colectate pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.
- Nu colectăm nicio informație care să permită identificarea persoanelor fizice.

Managementul stocării

Verifică și gestionează spațiul de stocare local și în cloud.

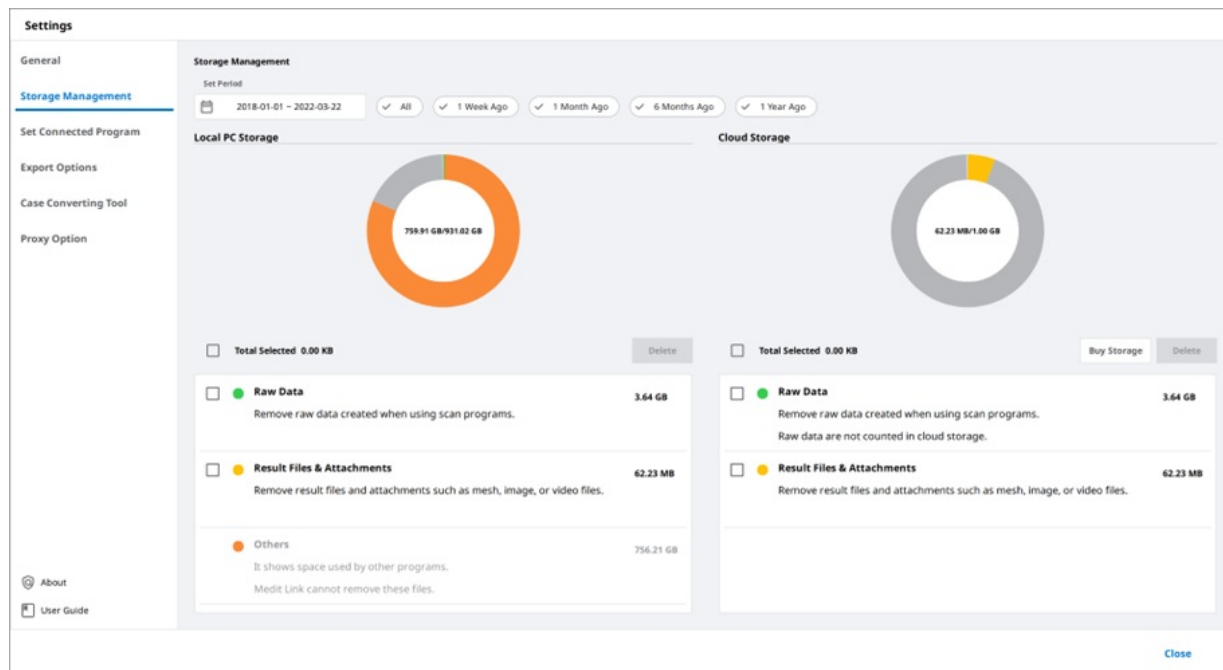

Setează perioada

Stabilește perioada specifică pentru a șterge datele create în intervalul de timp de mai jos.

- Toate: Vezi toate fișierele.
- Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare.
- Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună.
- Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni.
- Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.

Stocare locală

Gestionează spațiul de stocare al calculatorului.

Date neprelucrate	Elimină datele brute selectate de pe PC. Dacă datele neprelucrate sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.
Rezultat & Atașament	Elimină fișierele rezultate și fișierele atașate de pe PC, cum ar fi rețele, imagini și videoclipuri. Dacă aceste fișiere sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.

Altele	Consultă fișierele utilizate pentru a opera sistemul și alte programe. Afișează spațiul de stocare al calculatorului tău. Nu poți elimina aceste fișiere din Medit Link.
Șterge	Elimină fișierele selectate de pe calculator.


Spațiu de stocare Cloud

Gestionează spațiul de stocare în cloud.

Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele neprelucrate de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului, etc.
Rezultat & Atașament	Rezultatul și fișierele atașate ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Cumpără stocare	Dacă ai un plan Standard, abonează-te la cel Premium pentru a-ți extinde spațiul de stocare în cloud.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu de stocare.

Setează programul conectat

Administrează programele care sprijină integrarea în Medit Link.

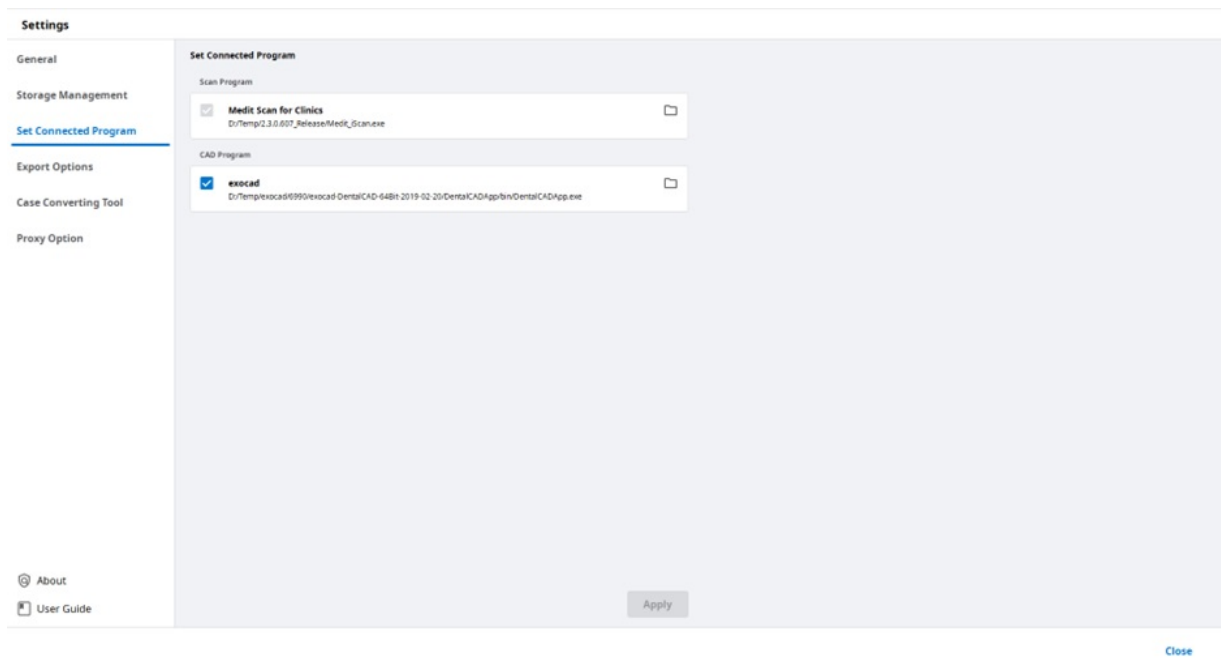

Poți conecta următoarele programe:

	Contul clinicii	Cont de laborator
Program de scanare	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.
Program CAD	exocad	exocad

!Notă

Integrarea următoarelor servicii nu este disponibilă pentru Medit Link pentru Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opțiuni de export

Stabilește modul de export al fișierelor din Medit Link.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Export Options' tab selected. The left sidebar contains 'General', 'Storage Management', 'Set Connected Program', 'Export Options', 'Case Converting Tool', and 'Proxy Option'. The main area is divided into several sections: 'Export Options' (CAD Type: Maestro, Export Files To: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/, Mesh Format: Convert mesh files to the below formats, with PLY selected and 'Do not convert the attached files' checked; Image Format: Convert images to the below format, with PNG selected; Compress & Combine: Compress Files and Combine Individual Mesh are unchecked; Options when same folder or file already exists: Always ask when exporting is selected), 'Rule for Folder Name' (Creation Date, Scanning Date, Order Date, Patient Name, Case Name, Partner Name, Patient ID, Order ID, Folder Name: Case Name), and 'Rule for File Name' (Creation Date, Scanning Date, Order Date, Patient Name, Case Name, Partner Name, Patient ID, Order ID, File Name: Case Name). The 'Apply' button is at the bottom right, and a 'Close' button is at the bottom center.

Tip CAD	Selectează programul CAD pe care vrei să îl folosești pentru proiectare. Programul va ajusta rezultatele pe baza selecției tale, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Exportă fișiere în	Specifică calea în care dorești să stochezi rezultatele.
Format rețea	Specifică formatul fișierului final al rețelei.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimare și combinare	Comprimă fișierele: Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier. Combină rețeaua individuală: Combină toate rezultatele pentru maxilar sau mandibulă într-un singur fișier. Atunci când folosești unele programe care nu pot importa și lucra cu mai multe fișiere, le poți unifica într-unul singur pentru a lucra în acele programe.
Opțiuni pentru situațiile în care același folder sau fișier există deja.	Alege acțiunea implicită pentru cazurile în care există același dosar sau nume de fișier în calea țintă. • Întreabă întotdeauna când exporti. • Exportă un nou fișier și suprascrie fișierele existente. Fișierul stocat în prezent va fi pierdut. • Creează un folder și exportă fișierele

Regulă pentru numele dosarului	Definește regulile de creare a unui nume de dosar la exportul de fișiere. Regula setată va fi aplicată la denumirea dosarelor, iar fișierul exportat va fi salvat în dosarul creat. Informațiile de mai jos pot fi utilizate pentru a stabili regula. - Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii - Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii
Regulă pentru numele fișierului	Definește regulile pentru numele fișierului exportat. Informațiile de mai jos pot fi utilizate pentru a seta regula. - Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii - Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii

Instrument de conversie a cazurilor

Mutarea cazurilor între conturi diferite.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option
About
User Guide

Export

2020-09-18 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오후 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 완성완료스캔	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-18 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:55


Close

Cum se utilizează Instrumentul de conversie a cazurilor

1. Deschide Medit Link și clic pe „Setări”.

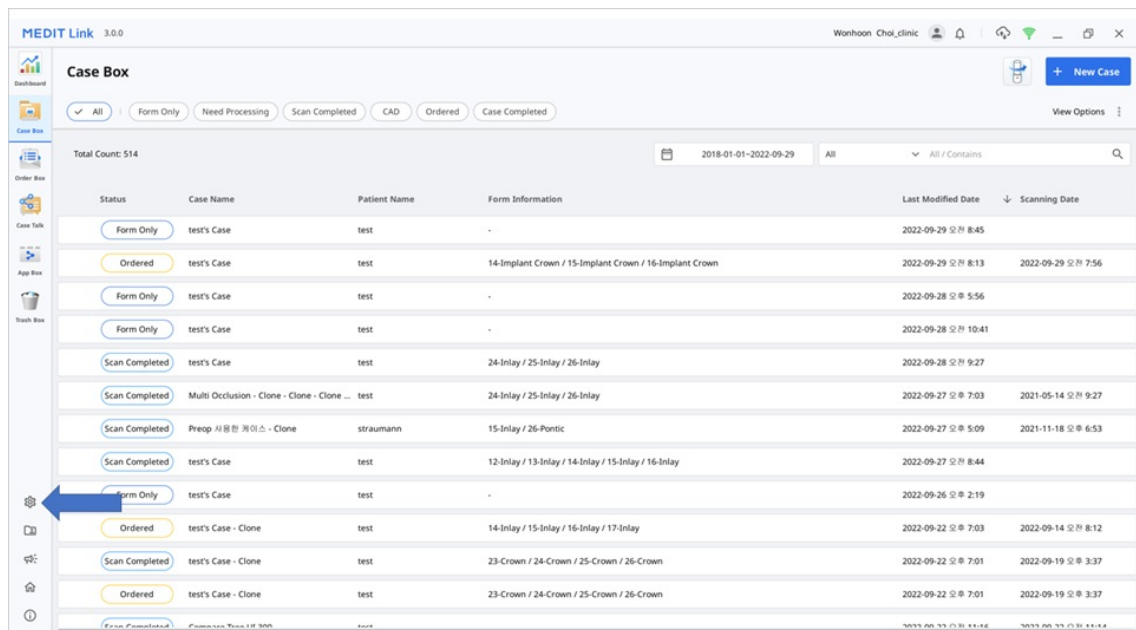


2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

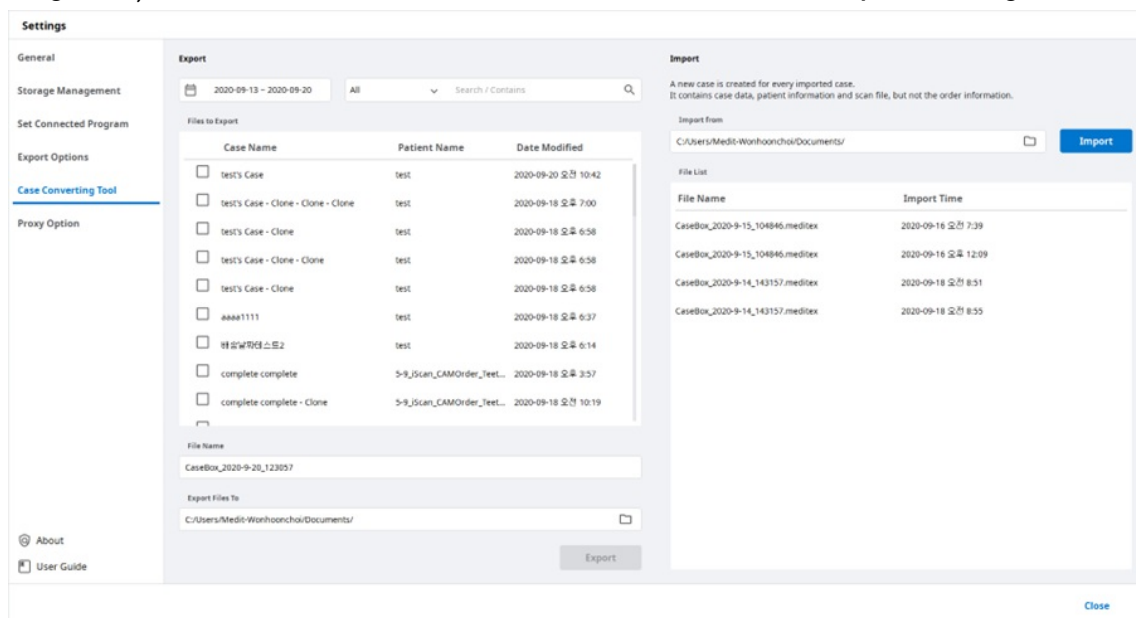

3. În secțiunea de import, clic pe pictograma de dosar pentru a căuta pe calculatorul tău fișierul .meditex pe care dorești să-l importi.


4. Clic pe butonul „Importă” și verifică fișierul importat în lista de fișiere de mai jos.

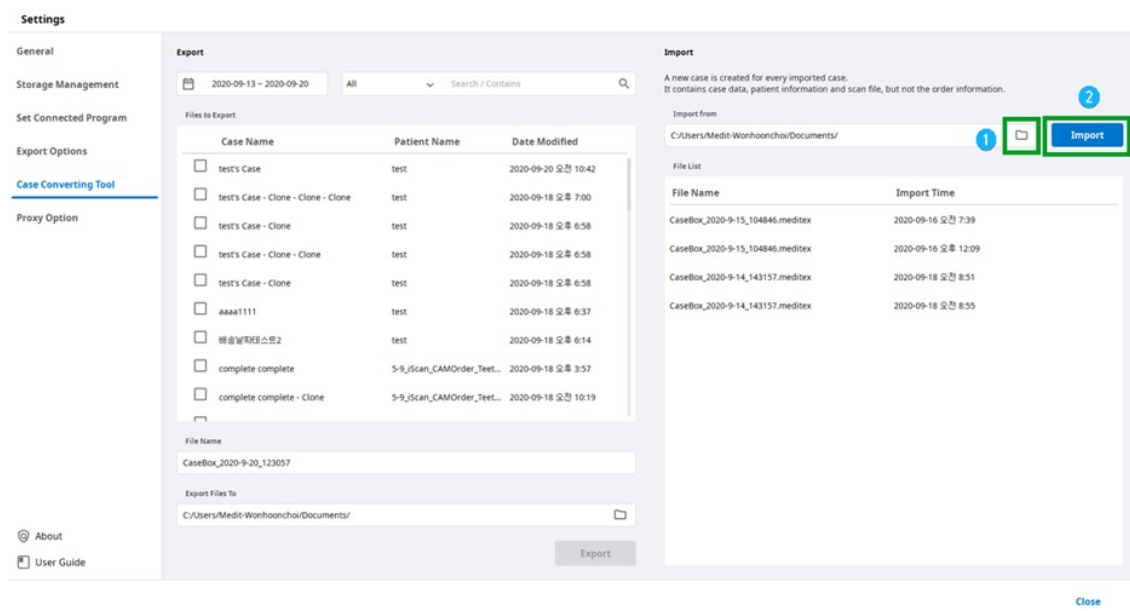

5. Cazul importat va apărea, de asemenea, în Case Box (cont de clinică) sau în Work Box (cont de laborator).


Opțiuni proxy

În unele medii de rețea limitate, poți modifica setările de rețea.

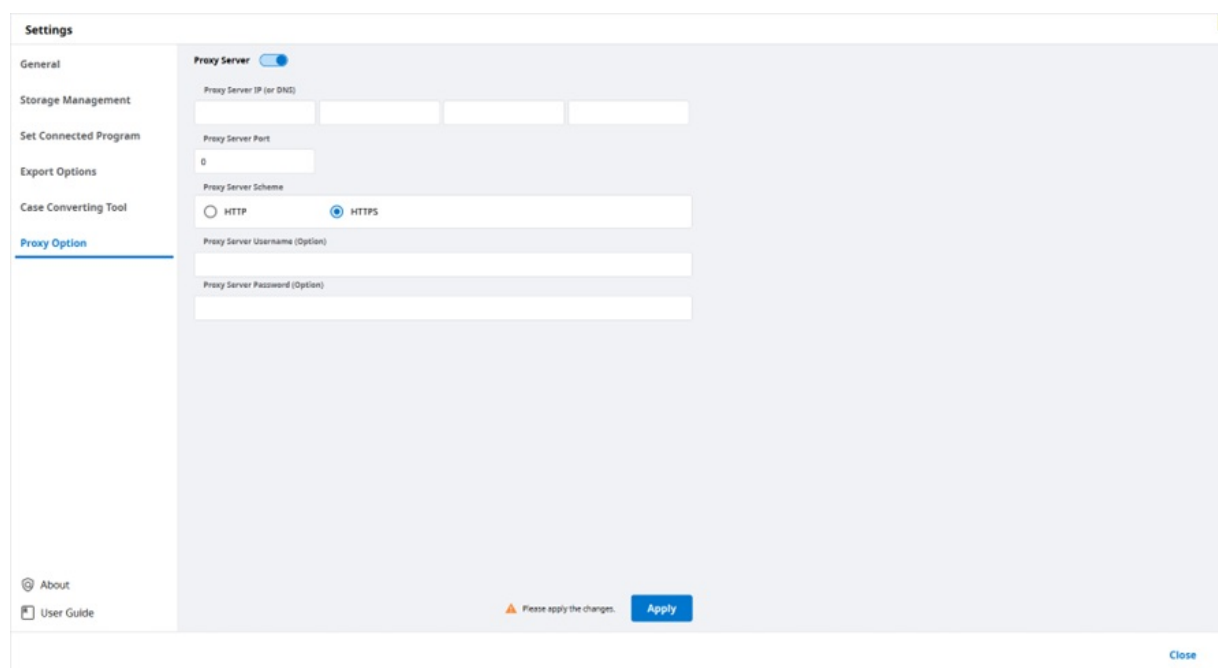

Despre

Afișează informații detaliate despre Medit Link.

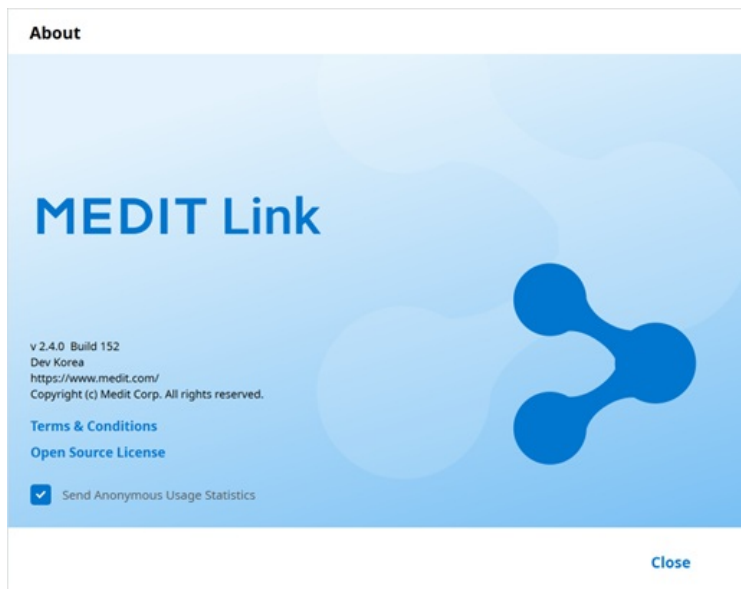

Manualul utilizatorului

Obține manualul de utilizare pentru Medit Link.

Deschiderea ghidului utilizatorului necesită o conexiune la internet.

Vizualizare fișier

Vizualizatorul de fișiere grupează și afișează diverse date, inclusiv datele obținute de la programele conectate la Medit Link și datele atașate de către utilizatori.

Oferă funcții de gestionare de bază, cum ar fi afișarea/ascunderea datelor, ajustarea opacității și ștergerea datelor.

Acceptă previzualizări ale fișierelor în următoarele formate:

- Date 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Fișiere video: MKV, MP4, AVI, WMV

Arbore de date

Poți să grupezi și să afișezi toate datele pentru caz în arborele de date. De asemenea, poți afișa/ascunde date, ajusta transparența și șterge date din arborele de date.





	Afișează/Ascunde	Poți afișa sau ascunde datele.
	Opacitate	Bara de diapozitive apare atunci când faci clic pe una dintre datele din arborele de date. Poți ajusta opacitatea datelor afișate prin deplasarea barei glisante. 
	Altele	Dacă faci clic pe pictograma Altele, se afișează caracteristicile suplimentare disponibile.  • Afișează doar asta: Ascunde toate celelalte date, dar afișează numai datele corespunzătoare. • Ascunde: Ascunde datele. • Duplicat: Copiază datele și le adaugă la grupul de atașamente. • Exportă: Exportă fișierele selectate. • Redenumeste: Schimbă numele datelor. • Șterge: Șterge datele.

!Notă

Poți redenumi datele atunci când ești online.

Instrumente de control model

Control model 3D

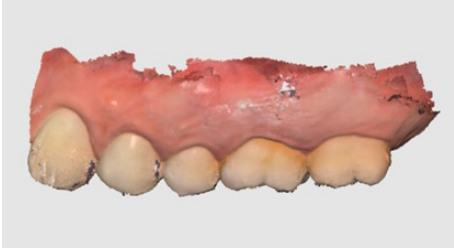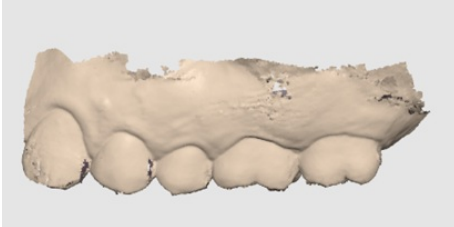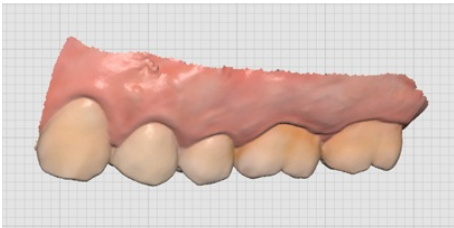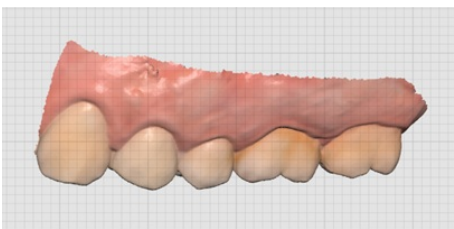	Panoramă	Mută modelul.
	Rotește	Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
	Mod afișare model	Textură pornită 
		Textură oprită 
	Setări grilă (mm)	Grilă pornită 
		Suprapunere pornită 
		Grilă oprită Ascunde grila.

Control imagine 2D

	Imagina următoare/precedentă	Deplasează printre imagini.
	Editează	Editează imaginea.


 	Prinde/lipește fereastra	Poți detașa fereastra de imagine și o poți ajusta în poziția dorită. Poți redimensiona fereastra. Când fereastra este readusă la locația inițială, aceasta revine la dimensiunea sa implicită.
--	-----------------------------	---

Instrumente de funcție

Captură de imagini și Memo


Capturează ecranul curent ca imagine 2D, desenează pe el sau adaugă notițe.


Îl poți salva ca fișier cu notele tale și îl poți trimite ca referință.

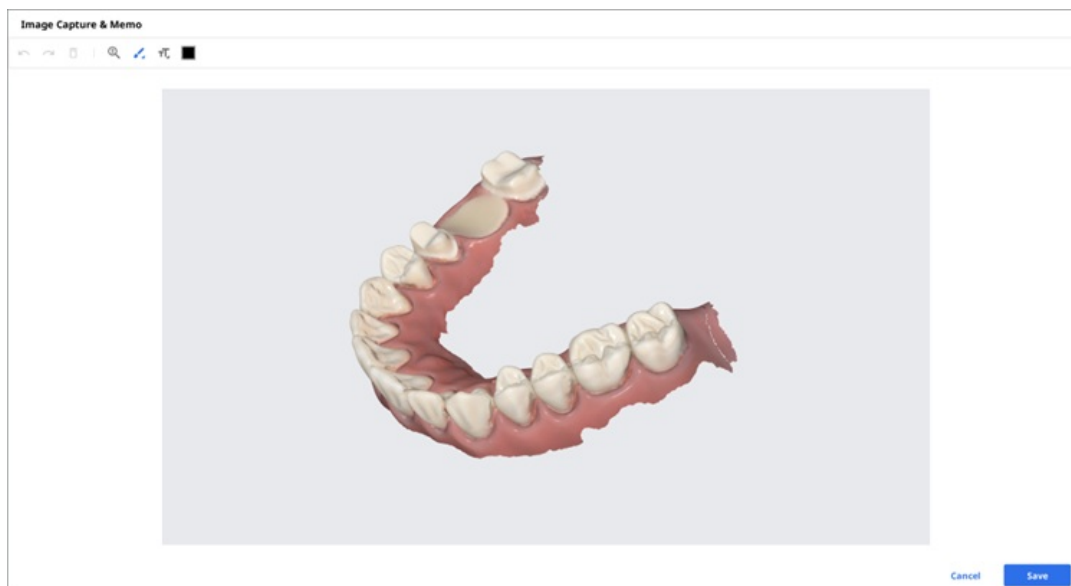

Captură orto


Captează imaginile în direcția curentă de vizualizare și sus/jos/stânga/dreapta din direcția curentă de vizualizare.

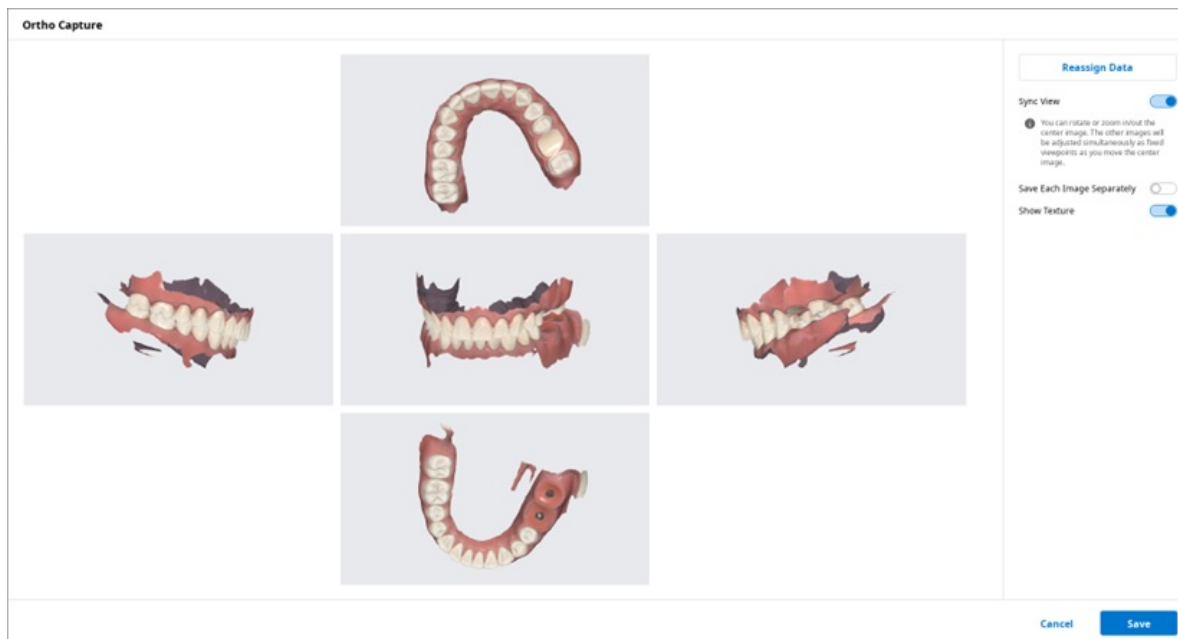

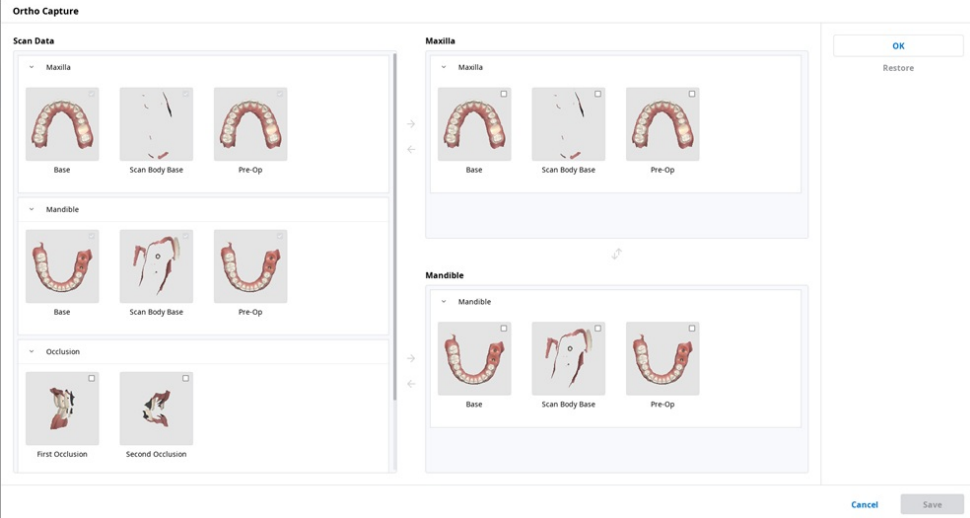Sincronizează vizualizarea	Când este activată, poți roti sau mări/micșora imaginea centrală. Celelalte imagini vor fi ajustate simultan ca puncte de vedere fixe pe măsură ce muți imaginea centrală. Atunci când este dezactivat, poți face panoramare, roti sau mări/micșora toate imaginile în mod individual.
Salvează fiecare imagine separat	Salvează fiecare imagine la rezoluție înaltă.
Afișează textura	Pornește/oprește textura pentru model.
Reatribuie date	Schimbă datele pentru maxilar/mandibulă cu ajutorul funcției Reatribuie date. Poți folosi datele modificate pentru a crea și utiliza imaginile rezultate din Captură Orto.  • Date de scanare: Sunt afișate toate datele de scanare pentru caz. • Maxilar: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru maxilar. • Mandibulă: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru mandibulă.


Umple găuri

Umple găurile din datele de plasă 3D.

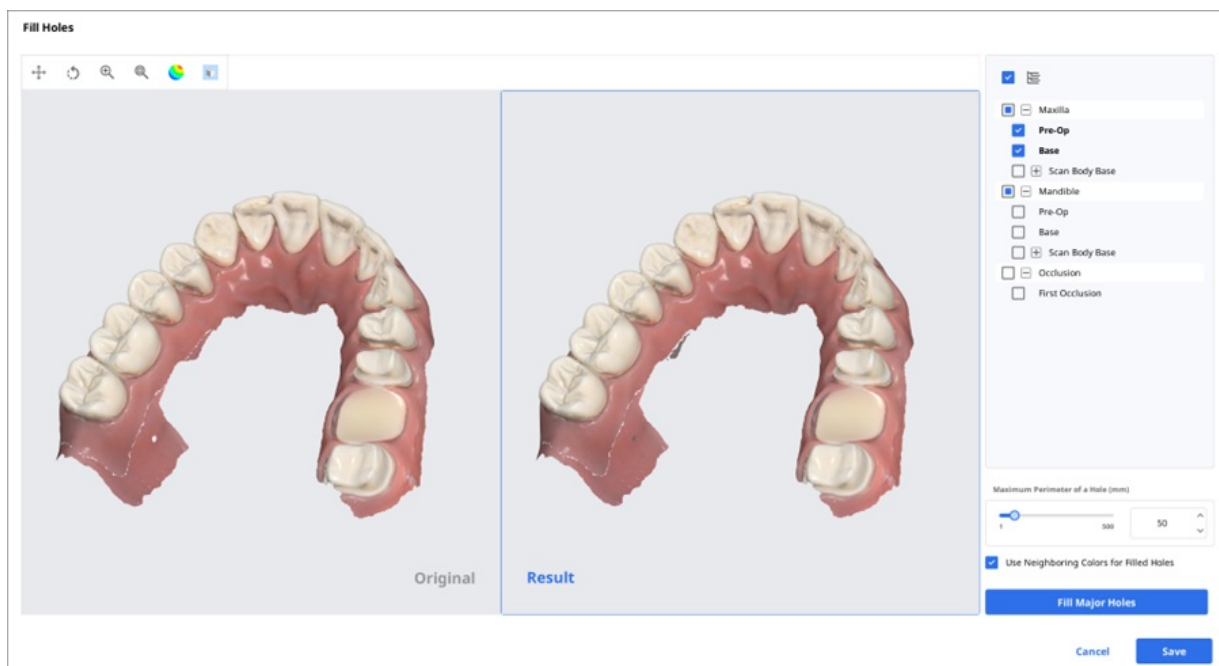

Decupare


Decuparea oferă diverse instrumente de editare a datelor.

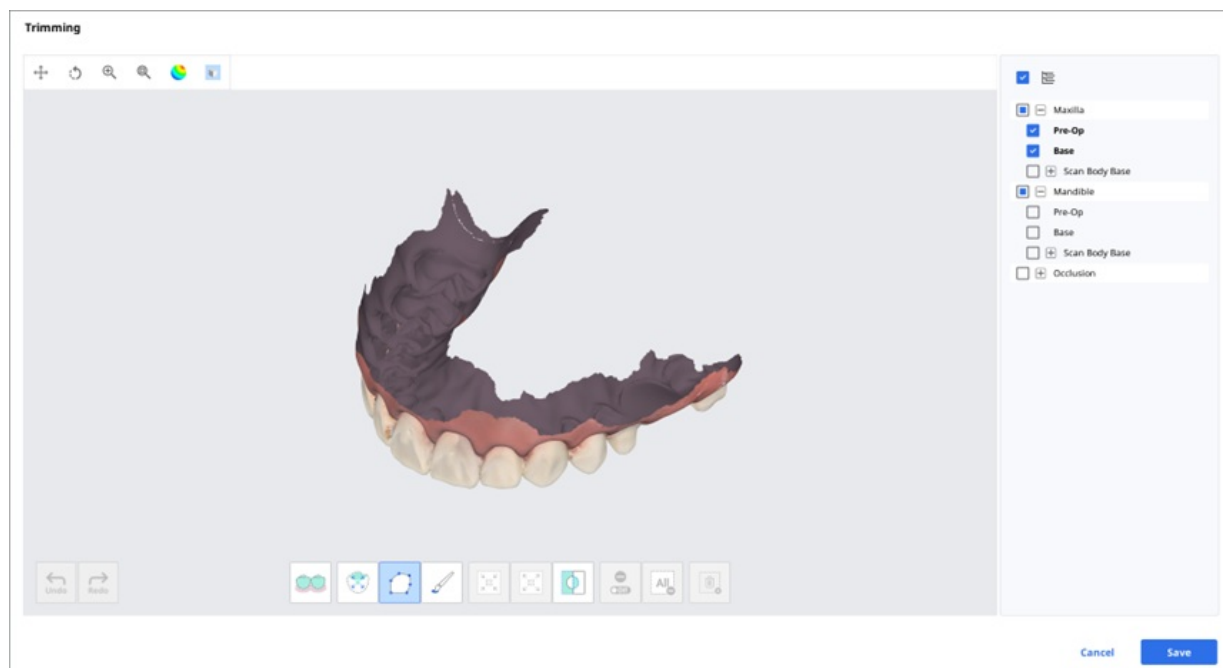

Datele de rețea 3D selectate pot fi editate cu ajutorul diferitelor instrumente situate în partea de jos a ferestrei.


Selecție		Selecție inteligentă a dinților	Selectează automat toți dinții de pe arcadă lăsând gingia la o parte. !Notă Această funcție este disponibilă numai pentru datele de scanare care au fost achiziționate de Medit Scan for Clinics cu opțiunea „Utilizează GPU” activată.
		Selecție inteligentă a dintelui	Selectează automat zona unui singur dinte, lăsând deoparte părțile gingivale. Fă clic, apasă și glisează cu mouse-ul pe dinte.
		Selectare polilinie	Selectează toate entitățile din interiorul unei forme poliliniale desenate pe ecran.
		Selectare pensulă	Selectează toate entitățile de pe o traiectorie desenată cu mâna liberă pe ecran. Doar fața frontală va fi selectată. Pensula vine în trei mărimi diferite.
Ajustarea zonei selectate		Micșorează zona selectată	Reduce zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Extinde zona selectată	Extinde zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Inversează zona selectată	Inversează selecția.
Deselectare		Selecție/Deselectie	Când este activată, deselectează zona cu ajutorul diferitelor instrumente.
		Șterge toată selecția	Șterge toate zonele selectate.
		Șterge zona selectată	Șterge datele din zona selectată.

1. Selectează zona pe care vrei să o decupezi cu ajutorul instrumentelor de selecție a zonei.

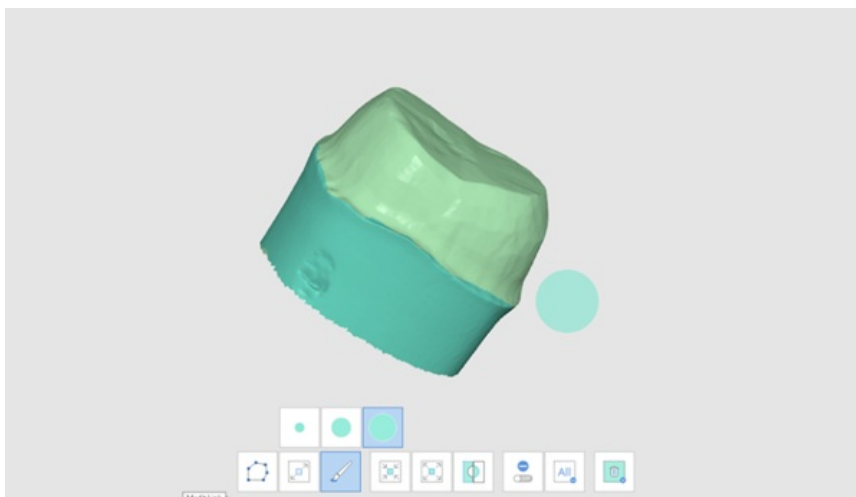


2. **!Notă**
Instrumentul de decupare polilinie selectează toate entitățile dintr-o formă polilinie desenată pe ecran, în timp ce instrumentul de decupare cu pensulă selectează numai datele feței frontale.


3. Poți inversa, micșora sau extinde selecția cu ajutorul următoarelor trei instrumente.
 - Inversează zona selectată

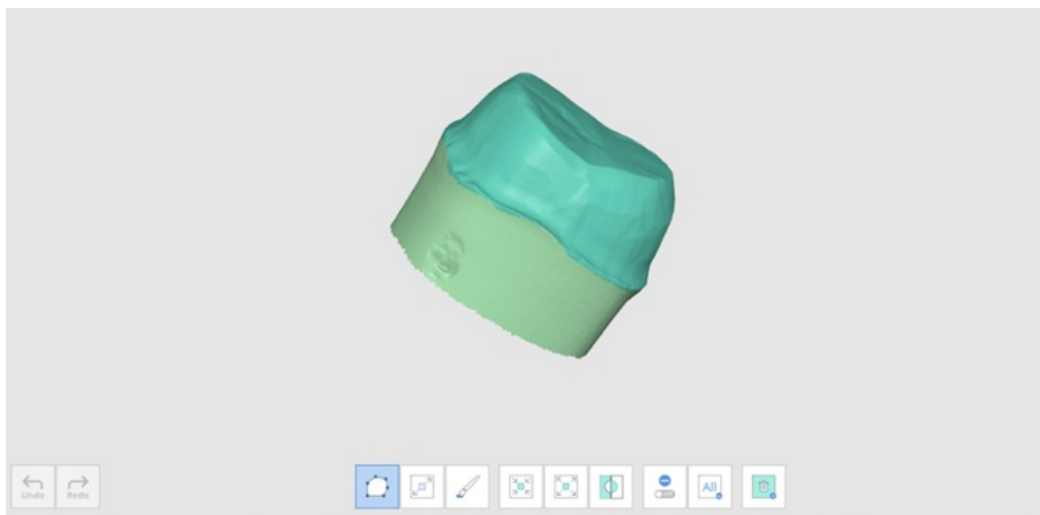

- Micșorează zona selectată

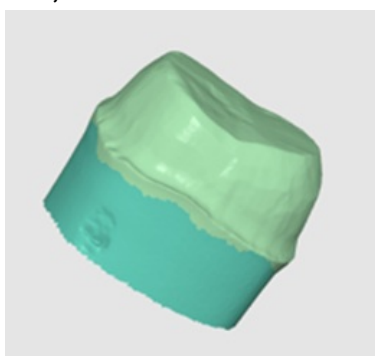


- Extinde zona selectată

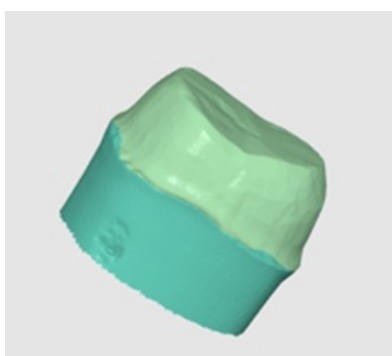

4. Poți deselecta zonele selectate cu ajutorul instrumentului Șterge zona selectată.



Optimizează alinierea ocluziei

Optimizează alinierea ocluziei. Poți alege datele țintă și ajusta alinierea ocluziei.

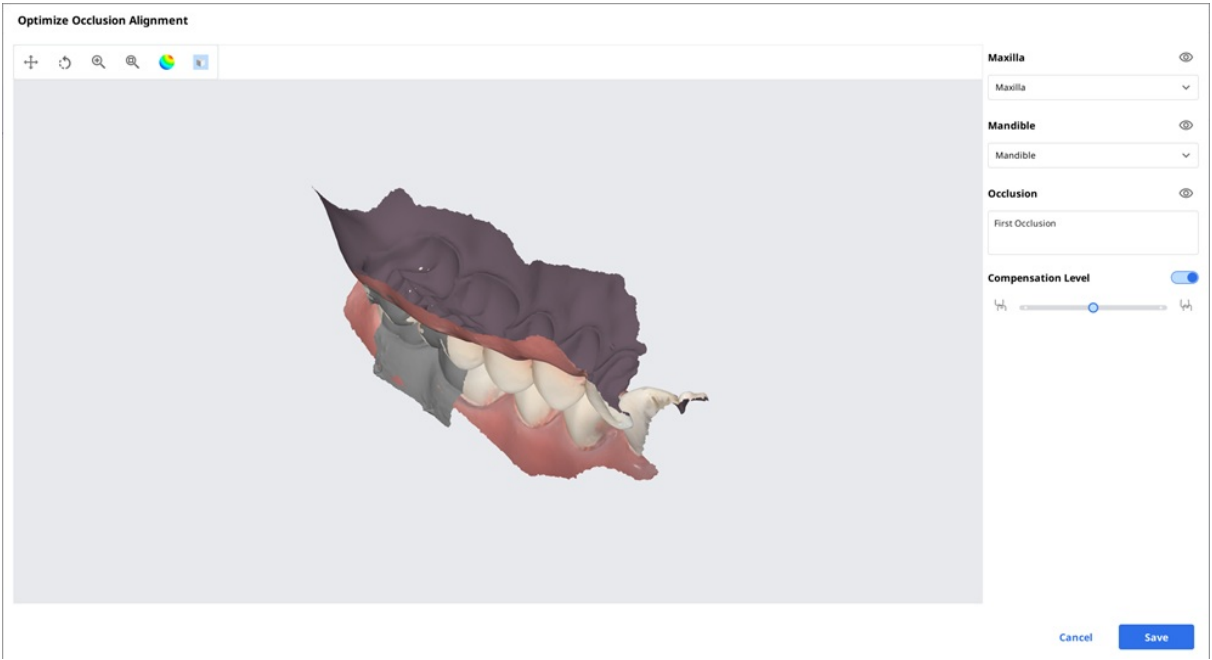


Nivel compensație

Scăzut		
Mediu		

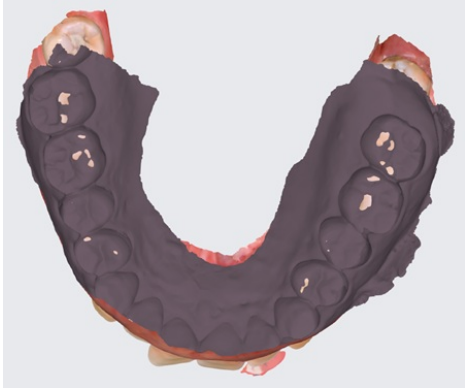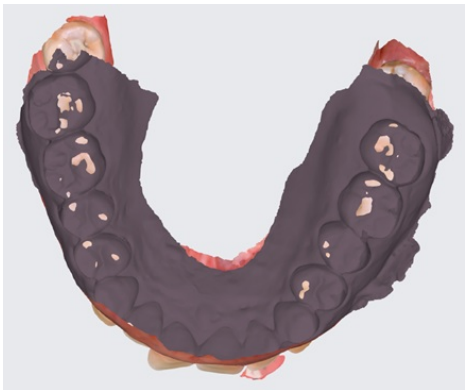Ridicat	Compensation Level ☒	
Dezactivat	Compensation Level ☐	

Mișcarea mandibulară

Poți reda mișcările mandibulare înregistrate în Medit Scan for Clinics pentru a vedea contactele ocluzale dinamice dintre dentiția superioară și cea inferioară.

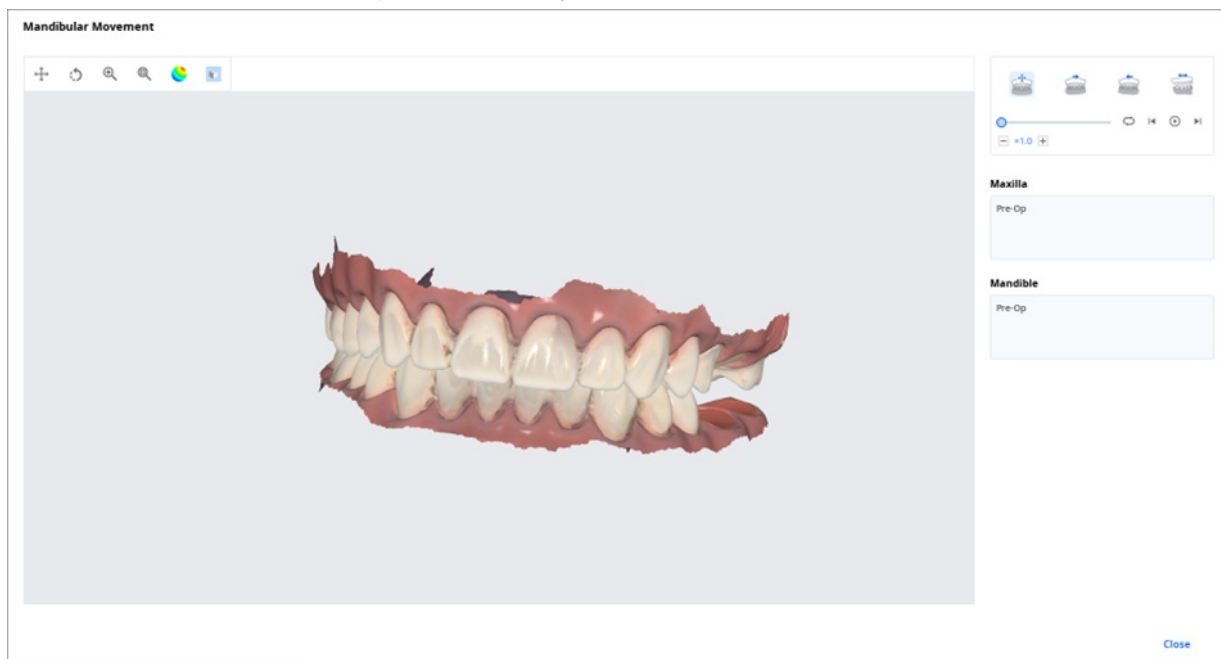

	Mișcare liberă	Redă înregistrarea cu mișcarea liberă a mandibulei.
	Mișcarea laterală stângă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre stânga.
	Mișcarea laterală dreaptă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre dreapta.

	Mișcare protuberantă	Redă înregistrarea cu mandibula care se mișcă înainte.
---	-----------------------------	--

Gestionează datele de ocluzie multiplă în vizualizare fișier

Poți obține mai multe rezultate ale datelor de ocluzie din aplicația Medit Scan.

Medit Link oferă funcția de gestionare a rezultatelor prin intermediul „Vizualizare fișier”.

Cum se gestionează mai multe rezultate


Atunci când utilizatorul primește mai multe rezultate de ocluzie de la Medit Scan for Clinics, Medit Link oferă opțiunea de a selecta un rezultat.

Lista de rezultate este listată după nume și poți selecta un element.

Modelul selectat va fi afișat în „Arbore de date” și în „Zona de afișare a modelului”.



Poți să reduci lista și să schimbi elementul cu ajutorul pictogramelor săgeată.

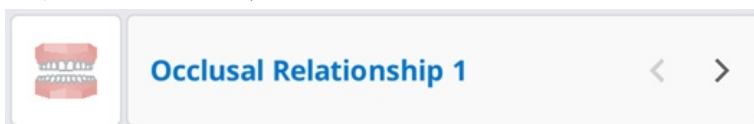

Vizualizează opțiuni

Poți modifica opțiunile de vizualizare pentru a personaliza aspectul listei de cazuri din Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statut filtre

Afișează sau ascunde fiecare filtru care reprezintă starea cazului. Filtrele de stare ascunse nu sunt afișate pe ecran în Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Poți găsi cu ușurință cazul de care ai nevoie cu ajutorul filtrelor afișate.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

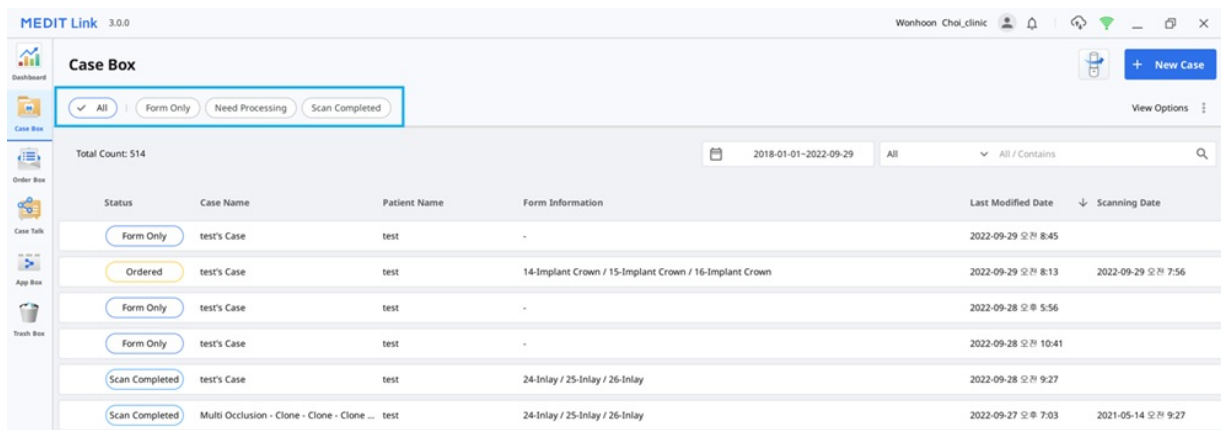

- Poți face clic pe starea pe care dorești să o vizualizezi pentru a afișa numai cazurile aflate în starea respectivă.
- Poți selecta mai multe stări deodată.

Opțiunile de filtrare disponibile pentru fiecare casetă:

Case Box	Toate/Doar formular/Necesită procesare/Scanare finalizată/CAD/Comandat/Caz finalizat
Order Box	Toate/În așteptare/Anulate/Refuzate/Acceptate/Expediate/Caz finalizat
In Box	Toate/În așteptare/Anulate/Refuzate/Acceptate/Pregătit/Expediate/Caz finalizat
Work Box	Toate/Doar formular/Necesită procesare/Scanare finalizată/CAD/Finalizat
Trash Box	Nu este acceptă

Tabel articole

Selectează elementele care urmează să fie afișate în lista de cazuri din Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Poți modifica ordinea elementelor tabelului sau ajusta lățimea coloanelor tabelului în vizualizarea listei pentru a optimiza cât mai bine mediul utilizatorului.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed


Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Vezi tip

Schimbă tipul de vizualizare între Vizualizare galerie și Vizualizare listă în Case Box.

Vizualizare galerie

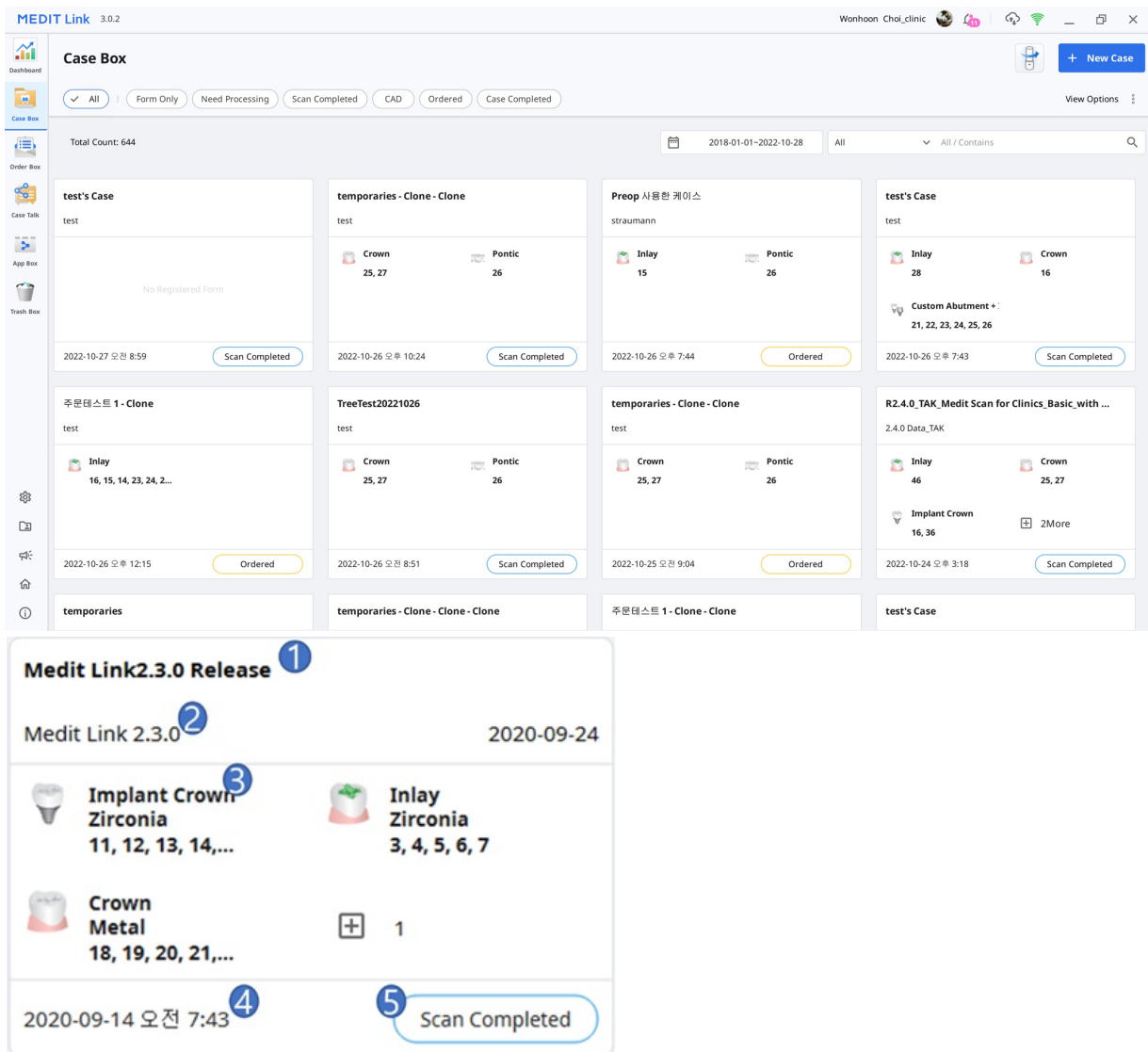

1	Nume caz
2	Numele pacientului și data nașterii
3	Informații formular
4	Data de scanare
5	Statut caz

Vizualizare listă

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

MEDIT Link

3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

+ New Case

View Options

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Wonhoonchoi-Lab
Scan Completed	케이스해모있고주문해모수경한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파일리스틀레스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Grupare

Selectează o opțiune de grupare pentru a clasifica și rearanja cazurile din listă în funcție de opțiunea selectată.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None

None

Patient Name

Order Date

Scanning Date

Sorting

Last Modified Date >

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de grupare:

Box	Grupare
Case Box	Niciunul
	Numele pacientului
	Data scanării
	Data comenzii
Order Box	Niciunul
	Data scanării
	Data comenzii

	Data de livrare solicitată
In Box	Niciunul
	Data comenzii
	Data de livrare solicitată
Work Box	Niciunul
	Data de livrare solicitată

Notă

Opțiunile de grupare și sortare nu sunt disponibile în Trash Box și Case Talk.

Sortare

Selectează o opțiune de sortare pentru a modifica ordinea cazurilor din listă în funcție de opțiunea selectată.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Sorting Last Modified Date ▾

☐ Patient Name
☒ Last Modified Date
☐ Scanning Date
☐ Order Date
☐ Lab Name

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

Box	Grupare	Sortare
Case Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator
	Nume pacient	Data ultimei modificări / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data comenzii / Nume laborator
	Data comenzii	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data scanării / Nume laborator
Order Box	Niciunul	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume laborator

	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume laborator
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator
In Box	Niciunul	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Numele clinicii
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data comenzii / Nume clinică
Work Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data ultimei modificări / Nume clinică

Notă

Opțiunile de grupare și sortare nu sunt disponibile în Trash Box și Case Talk.

Filtrare și căutare

Filtrează după dată

Filtrează și afișează cazurile modificate ultima dată în intervalul de timp stabilit.

1. Clic pe filtrul de durată.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selectează durata din listă.

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate ultima dată în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează cazurile modificate ultima dată astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 de zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 de zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile modificate ultima dată în cursul acestei luni.
- Luna precedentă: Afișează cazurile modificate în ultima lună.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Capacități de căutare avansată

Utilizează capacitățile de căutare pentru a găsi rapid informațiile pe care le dorești.

All

▼

Search / Contains



Următoarele criterii de căutare sunt disponibile pentru fiecare casetă:

Case Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Informații formular, Nume laborator
Order Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator, ID comandă
In Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă
Work Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Informații formular, Nume clinică, ID comandă
Case Talk	Nume Case Talk (conține), Nume pacient (egal cu)
Trash Box (Clinică)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume laborator, Șterse de către

Trash Box (Laborator)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, Șters de către
--------------------------	---

Poți selecta Criteriile de căutare și poți alege între logica Conține și Egal.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All
 ☐ Case Name
 ☐ Patient Name
 ☐ Patient ID
 ☐ Form Information
 ☐ Lab Name

☒ Contains
 ☐ Equals

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz

Crearea de cazuri

Creează un caz în Case Box (Clinică)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Introdu informații de bază, cum ar fi numele pacientului și numele cazului.
 - Dacă introduci un nume care nu se află pe lista de pacienți, se va adăuga un nou pacient.
 - Dacă introduci un nume care se află în lista de pacienți, îl poți selecta din listă.
 - Dacă înregistrezi un caz pentru un pacient existent, fă clic pe pictograma Lista de pacienți pentru a selecta un pacient existent.



- În caseta de dialog Lista de pacienți, poți înregistra un nou pacient sau poți edita informațiile unui pacient existent.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient's information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28	
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-09-18		
☐	13				0	2020-09-20		
☐	14				0	2020-09-20		
☐	15				0	2020-09-20		

Close Select

3. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Clic pe „Înregistrează și scanează” pentru a finaliza înregistrarea cazului și a trece la scanare.

- **Înregistrare:** Vei fi redirecționat către pagina principală. Acest lucru este util atunci când se înregistrează mai multe cazuri.
- **Înregistrare & Scanează:** Treci la fila Formular pentru a înregistra informații despre formular pentru caz.

Crearea unui caz în Work Box (Laborator)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Introdu sau selectează numele clinicii.
3. Introdu numele pacientului și numele cazului. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Introdu data preconizată de livrare având în vedere data de finalizare a lucrărilor.
5. După înregistrarea cazului, vei fi redirecționat către pagina principală.

Editare cazuri

Editare cazuri în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Clic pe pictograma „Caută” pentru a schimba numele pacientului. Reține că acesta nu poate fi editat direct; în schimb, poți găsi un nume de pacient cu care dorești să îl înlocuiești pe cel actual și poți edita informațiile despre pacient din listă.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-09-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Bifează numele pacientului cu care vrei să îl înlocuiești pe cel actual.
4. Pentru a crea un nou pacient, apasă butonul „Pacient nou”.
5. Utilizează butonul „Editare” pentru a modifica informațiile înregistrate despre pacient.
6. Clic pe „Aplică” pentru a finaliza procesul.

Editează cazuri în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clic pe „Aplică” după ce ai terminat editarea.

Notă

Nu poți edita informațiile despre cazurile primite prin intermediul comenzii în In Box.

Clonarea cazurilor

Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Vei fi întrebat ce fel de informații dorești să clonezi în noul caz.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Alege dacă vrei să reproducă doar informațiile din formular sau toate datele.
4. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.

Clonarea cazului în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Duplicarea tuturor datelor pentru a crea un nou caz.
3. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.


Ștergerea cazurilor

Șterge caz (clinică și laborator)

1. Clic pe pictograma „Șterge”.



2. Clic pe „OK” pentru a șterge cazul.

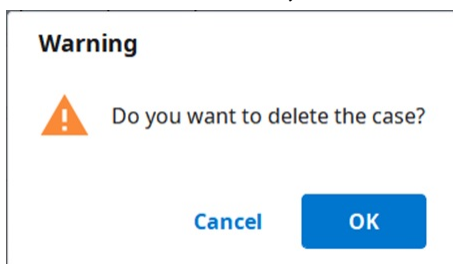

3. Cazurile șterse sunt mutate în coșul de gunoi și pot fi recuperate dacă este necesar.

Informații formular

Poți introduce informațiile din formular în funcție de programul conectat și de tipul de tratament.

Informațiile pe care le introduci vor fi folosite ca informații de bază pentru a lucra cu programe de scanare sau CAD și pentru a comanda.

Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box

Introdu în fila Formular

1. Selectează dacă dorești să introduci informații despre tratament pe dinți sau pe arcadă.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
3. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Introdu în fila CAD

1. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
2. Selectează numărul dintelui/arcada/numărul matriței.
3. Definește setările pentru opțiunile detaliate și operațiunile CAD.
4. Clic pe „OK” pentru a salva setările.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
5. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea

Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box

Introdu în fila Formular

1. Selectează programul de scanare pe care vrei să-l utilizezi.
2. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
3. Metodele pot fi diferite în funcție de programul de scanare selectat.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dinți	☐	☐
Arcadă	☐	☐
Matriță multiplă flexibilă	☒	☐
Matriță multiplă	☒	☐


4. Selectează numere de dinți, arcade sau matrițe pentru procesul de scanare.
5. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.
6. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Introdu în fila CAD

1. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
2. Selectează numărul dintelui/arcada/numărul matriței.
3. Definește setările pentru opțiunile detaliate și operațiunile CAD.
4. Clic pe „OK” pentru a salva setările.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.
5. Clic „Salvează”.

Conectarea dinților în punte

Poți conecta mai mulți dinți într-o punte atunci când același material este aplicat pe mai mulți dinți adiacenți. Clic pe pictograma punte de lângă dinții selectați pentru a-i conecta sau deconecta.

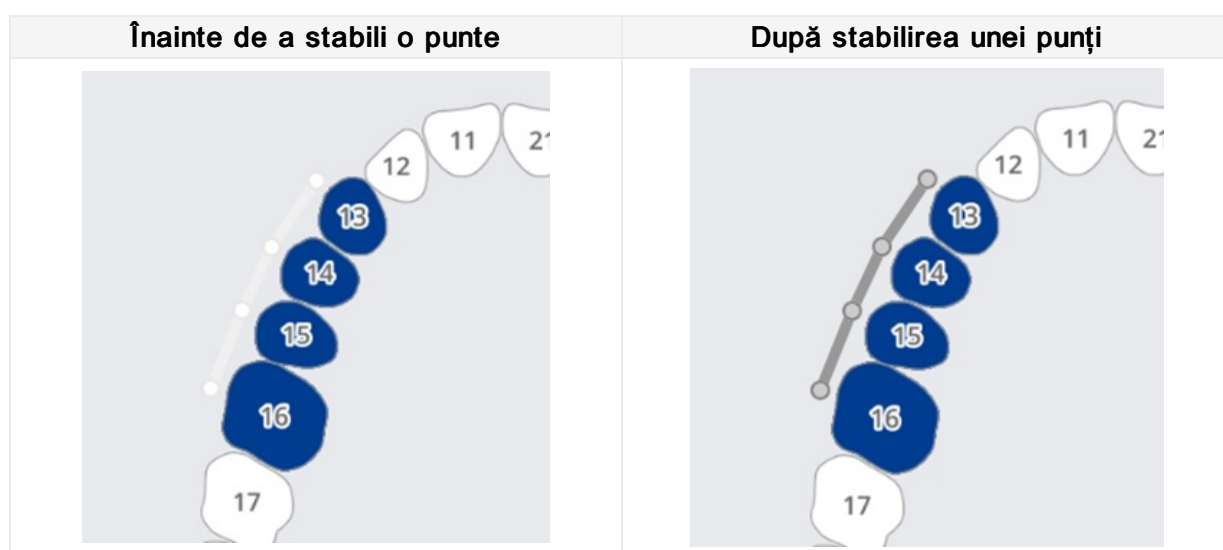

Setarea opțiunilor de scanare

În funcție de programul cu care lucrezi, sunt oferite diferite opțiuni de scanare.

Opțiunile de scanare selectate sunt transmise fiecărui program de scanare.

Medit Scan for Labs

Opțiuni generale

	Dinți adiacenți	Marchează dinții preparați și adiacenți și trimite informația către programul de scanat.
	Antagonist	Marchează automat antagonistul și oferă informațiile programului de scanare.
	Articulator	Afișează opțiunile de selectare ale articulatorului în programul de scanare.
	Marcator de mișcare	Permite utilizarea strategiei de scanare „Mișcarea fălcilor” în programul de scanare.

Opțiuni în funcție de dinți

	Corp de scanare	Permite stabilirea unei strategii de scanare a corpurilor de scanare în programul de scanare.
	Scanare pre-operatorie	Permite stabilirea unei strategii de scanare a unui model pre-operator în programul de scanare.
	Scanare ceruită	Permite setarea unei strategii de scanare a cerii în programul de scanare.

Adăugare la favorite

Poți selecta rapid un produs înregistrându-l ca favorit.

Lista de favorite înregistrate este gestionată ca un șablon și poate fi partajată prin intermediul funcțiilor de export și import.

Adaugă la favorite

1. Selectează numărul dintelui.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - o Tip - Metodă - Material - Nuanțele pot fi înregistrate ca favorite chiar dacă nu sunt selectate toate.
3. Clic pe pictograma „Stea”.
☆
4. O combinație a parametrilor selectați, cu excepția numărului de dinți, se află pe lista de căutare preferată.

Gestionează șabloanele favorite

Poți înregistra, gestiona și partaja diferite tipuri de șabloane.

Adaugă	Adaugă un șablon nou.
Redenumeste	Redenumeste șablonul curent.
Șterge	Șterge șablonul curent.
Exportă	Exportă șablonul curent într-un fișier.
Importă	Importă un fișier șablon.

Lucrează la scanare/CAD

Proces de scanare

Pe baza informațiilor introduse, continuă cu scanarea.

1. Introdu/salvează informațiile despre tratament și selectează opțiunile de scanare necesare.
2. Clic pe butonul „Scanează” din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Proces CAD

Medit Link este integrat cu exocad.

CAD	Înregistrarea informațiilor privind tratamentul	Confirmarea informațiilor privind tratamentul	Execuție directă CAD	Importul rezultatelor CAD înapoi în Medit Link
exocad	☐	☐	☐	☐

1. În Setări > Setează programul conectat, poți conecta programul CAD ales din listă.
2. Introdu/salvează informații despre sarcini și opțiuni de proiectare în fila CAD.
3. Clic pe „CAD” în colțul din dreapta sus al ferestrei.
4. Programul CAD asociat este rulat, iar datele sunt trimise automat.
5. Salvează rezultatele după efectuarea CAD.

!Notă

Medit Link pentru Mac nu acceptă funcția de conectare cu CAD.

Obține fișierele de rezultate

Exportă fișierele de rezultate ale scanării

În plus față de partajarea rezultatelor cu partenerii prin intermediul comenzilor, Medit Link îți permite să stochezi rezultatele în formatul de fișier dorit folosind funcția de export.


Exportă fișiere în	Specifică calea în care dorești să stochezi rezultatele.
Numele folder-ului	Sistemul creează un dosar nou și stochează toate rezultatele în el. Numele implicit al dosarului este stabilit de regula de denumire. Dar poți schimba direct numele dosarului. Poți defini regula de denumire prin Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele dosarului
Nume fișier	Stabilește numele de fișier pentru rezultat. Regula de denumire stabilește numele implicit al fișierului. Dar poți schimba direct numele fișierului. Poți defini regula de denumire prin Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele fișierului
Tip CAD	Selectează programul CAD care urmează să fie utilizat pentru programul de proiectare. Medit Link va ajusta fișierele pe baza acestei selecții, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Format rețea	Selectează formatul fișierului rețea.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimă fișiere	Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier.
Combină rețelele individuale	Combină rezultatul maxilarului sau mandibulei cu cel al dintelui individual. Util atunci când nu este posibilă importarea mai multor fișiere într-un program.

Exportă toate relațiile ocluzale	Atunci când sunt generate mai multe rezultate ocluzale din aplicația de scanare, poți exporta toate rezultatele ocluzale deodată.
Salvează informațiile cazului ca PDF	Salvează informațiile despre caz în format pdf cu rezultatul.


Exportă fișierele selectate

Medit Link oferă o funcție de export din meniul extins din vizualizatorul de fișiere. Cu ajutorul acestuia, poți exporta cu ușurință fișierele selectate.

1. Clic pe pictograma „Meniu” de lângă grupul de date sau o entitate din arborele de date al vizualizatorului de fișiere.
2. După clic „Exportă”.

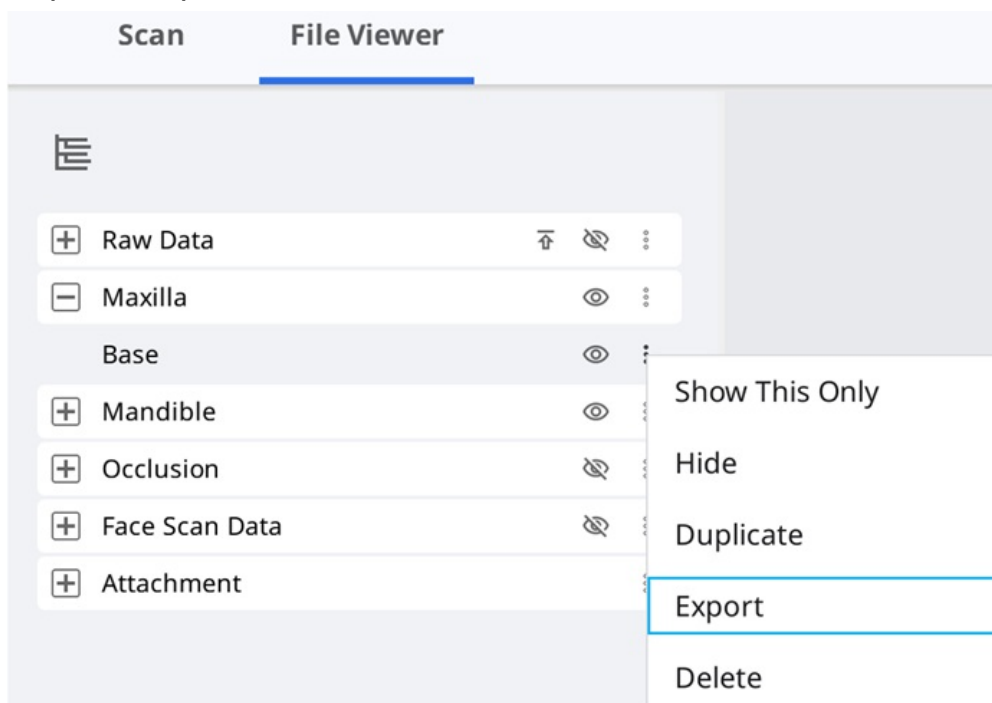

3. În caseta de dialog privind exportul sunt afișate numai fișierele selectate pe care vrei să le exporti.

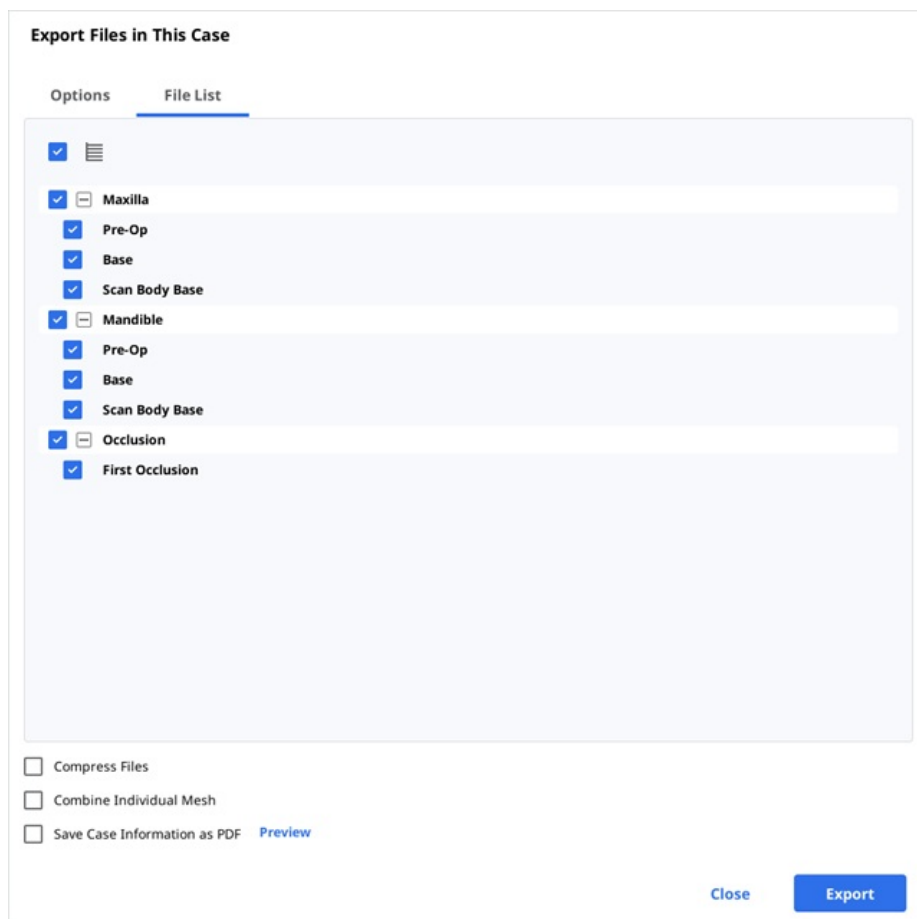

4. În cele din urmă, clic pe „Exportă”.

Exportă Linia marginală


Medit Scan for Clinics oferă o funcție de creare a liniei marginale, iar Medit Link poate transfera linia marginală în programul CAD.

Exportă linia marginală ca o culoare

În general, Medit Link convertește linia marginală în culoare și exportă rezultatul cu maxilarul sau mandibula împreună. Poți crea linia marginală în cad-ul lor făcând referire la informațiile de culoare.

Exemplu:

Maxilar

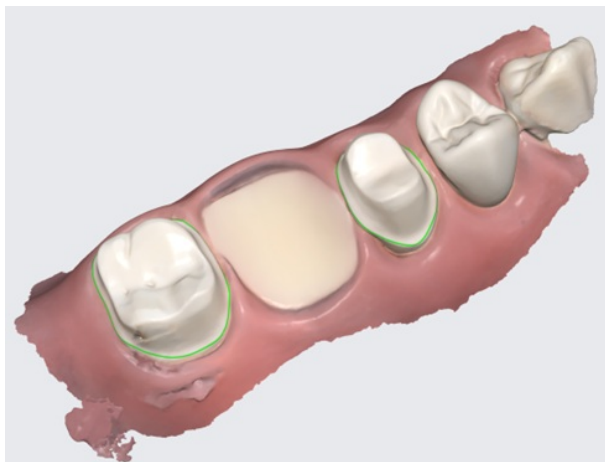

Rezultat cu linia marginală ca o culoare

iNotă

Această funcție este disponibilă pentru formatele care includ informații despre culori, cum ar fi meditMesh, OBJ și PLY. Linia marginală nu se convertește în STL.

iNotă

Tipul CAD > 3shape nu acceptă această caracteristică.


Exportă linia marginală ca fișier

În cazul Exocad, Medit Link exportă linia marginală în „~margin.xyz”, care poate fi importată direct în exocad.

Poți utiliza acest fișier în exocad fără lucrări suplimentare.

Exemplu:

Maxilar	Linie marginală
---------	-----------------

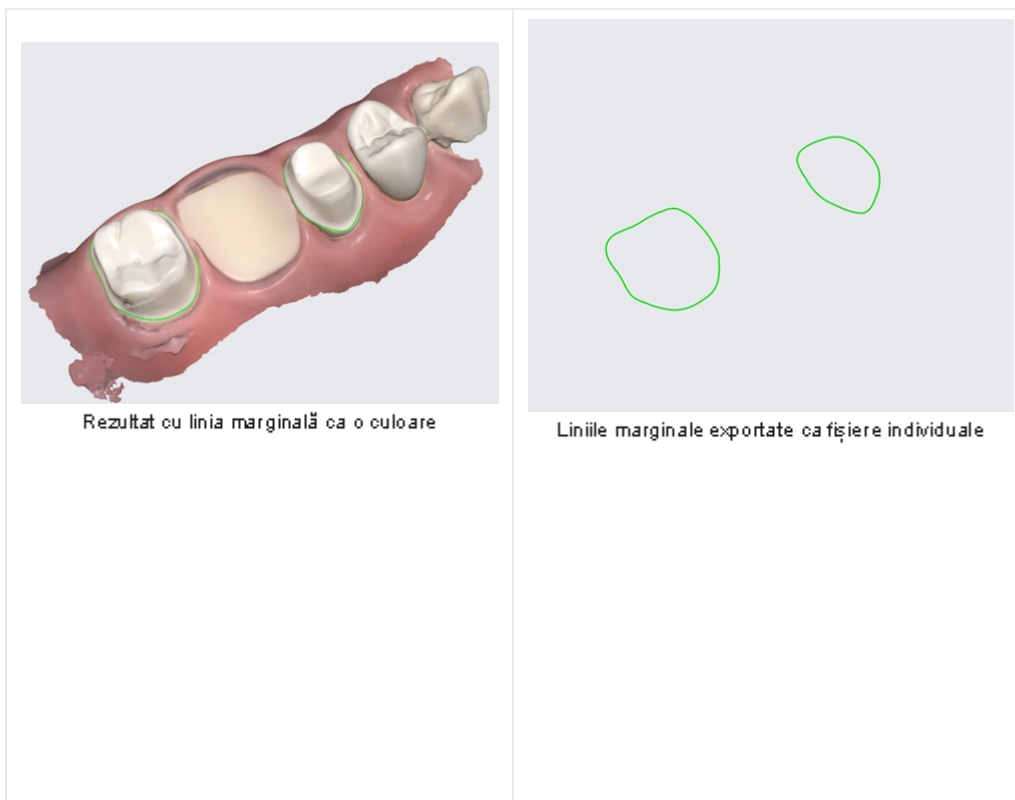

Exportă lista de cazuri ca CSV

Medit Link oferă funcția de a exporta lista de cazuri în format CSV.

Poți exporta lista de cazuri cu informații de bază și poți gestiona cazurile cu ușurință.

Funcția „Exportă în CSV” este disponibilă în următorul meniu al aplicației Medit Link.

- In Box
- Work Box

Cum se exportă lista de cazuri

1. Mergi la In Box sau Work Box.
2. Selectează cazurile pe care se dorește să le exporti.

MEDIT Link 3.0.0

Wonhoan Choi

In Box

✓ All Pending Accepted Case Completed

Cancel Selection Delete Items Selected: 5

2018-01-01~2022-09-29 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐	Pending	test's Case	test	2022-09-29 오전 8:13	2022-10-01 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10413603	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10374886	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10374864	
☐	Accepted	test's Case	test	2022-09-13 오후 2:43	2022-09-15 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10314293	
☒	Pending	test's Case	test	2022-09-05 오전 7:31	2022-09-07 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10268220	
☐	Case Completed	Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 오전 8:51	2021-07-08 오전 8:50	Wonhoanchoi-Clinic	8579990	500 KRW
☒	Case Completed	test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 오후 4:10	2021-09-07 오후 4:10	Wonhoanchoi-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒	Case Completed	test's Case memo	test	2022-04-08 오후 11:...	2022-04-15 오후 7:45	Wonhoanchoi-Clinic	9569817	

3. Clic pe butonul „Meniu extins” din partea de sus pentru a selecta opțiunea „Exportă în CSV”.



4. Definește calea și numele fișierului, apoi salvează rezultatele.

Descarcă fișiere de pe Medit Link Web

Medit Link oferă o funcție de descărcare.

Dacă dorești să obții fișierele de rezultate fără a instala aplicația Medit Link, poți descărca fișierele de pe serviciul web Medit Link.

!Notă


Datele trebuie să fie încărcate pe Medit Cloud pentru a descărca fișierele de pe web.

Funcția de descărcare este disponibilă în următorul meniu al serviciului web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Poți găsi butonul „Descarcă” în dreapta sus.

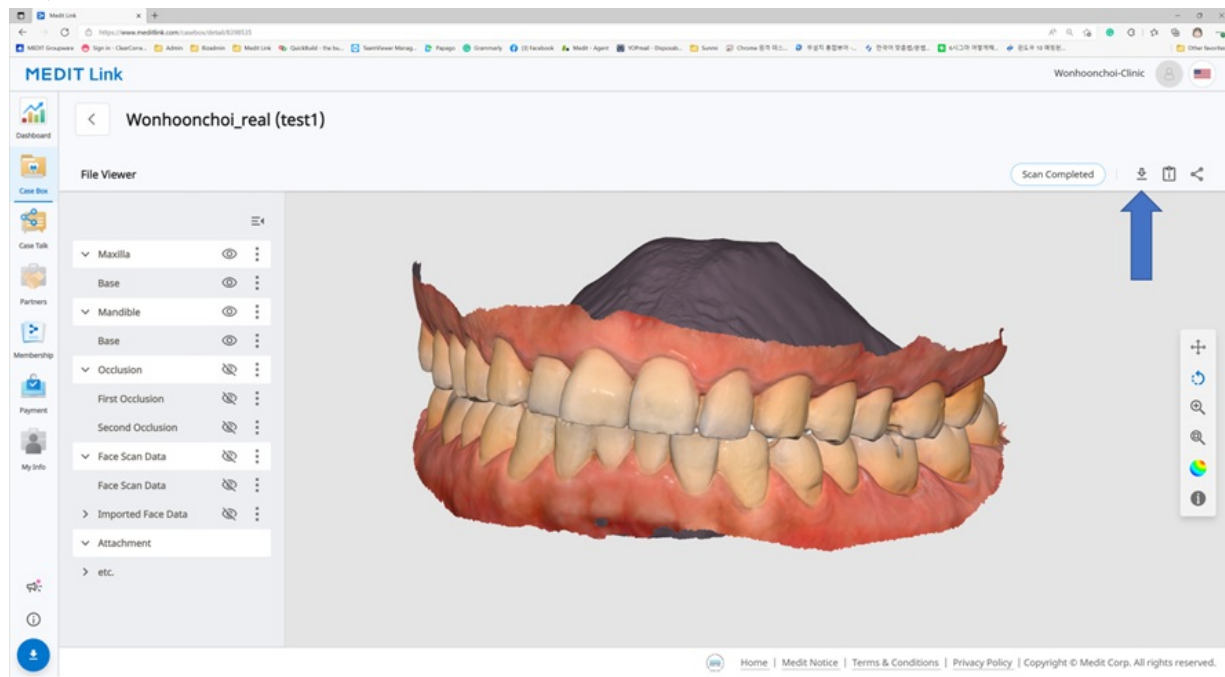

Web Viewer

Atunci când partajezi un caz utilizând Case Talk, poți seta dacă permiți sau nu descărcarea.

Dacă bifezi „Acordă permisiunea de descărcare” și partajezi cazul, toți utilizatorii care se conectează la link-ul partajat pot descărca fișierele.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** *Premium Feature*

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

În Web Viewer, poți găsi pictograma „Descarcă” în dreapta sus.

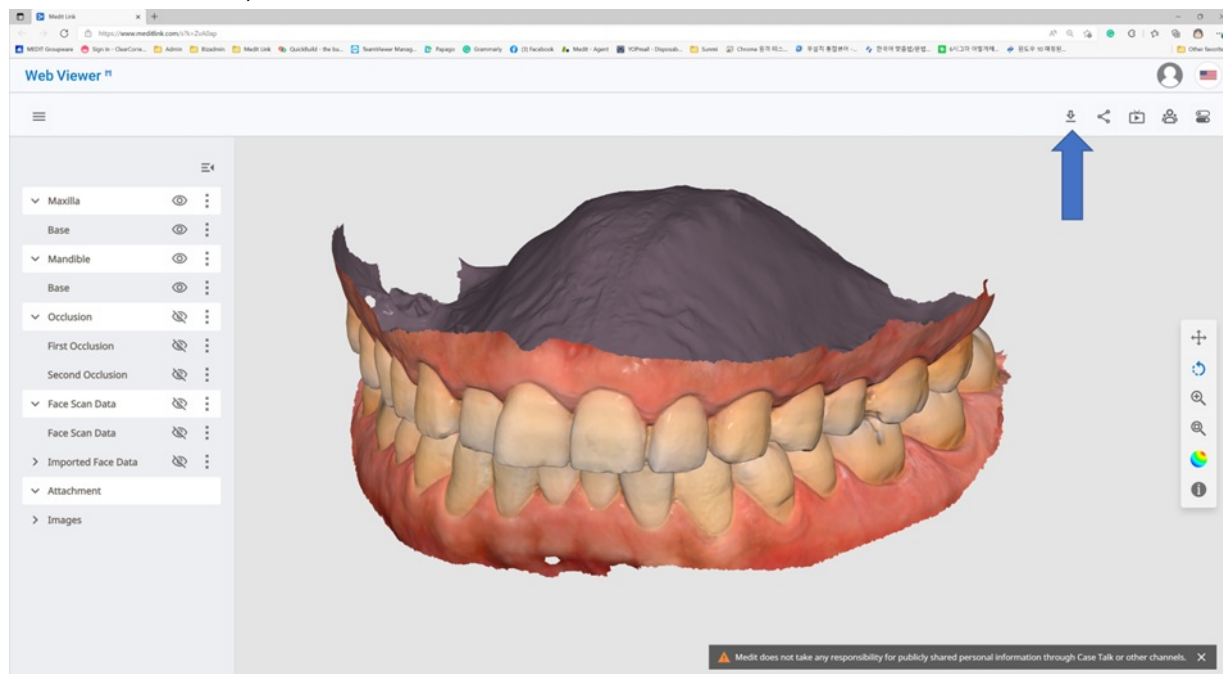

Cum se descarcă

1. Clic „Descarcă”.



2. Selectează formatul de rețea din fereastra de dialog pentru descărcare.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. După clic „OK”.

Comandă/gestionează comenzi

Poți să comanzi cu ușurință un caz cu datele obținute de la programele conectate și datele atașate de către utilizator.

Comandarea cazurilor

Poți plasa o comandă pentru partenerii tăi în Case Box.

1. Clic pe butonul „Comandă”.
2. Verifică informațiile necesare pentru comanda ta.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:

- Order** (Title)
- Tabs: **General** (selected), Order List, File List
- Partner**: WonhoonChoi_Lab_Stage (dropdown menu)
- Partner Info** (Card):
 - Icon: A person at a computer.
 - Name: WonhoonChoi_Lab_Stage
 - Address: Seoul, KR
 - Address: [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 - Phone: 01026088546
- Case Name**: mandibluar movement - Clone - Clone
- Patient Name**: Test Occlusion
- ☒ Share patient information
- Requested Delivery Date**: 2023-04-13 (calendar icon)
- Delivery Time**: AM 8:00 to PM 8:00 (clock icon, current time 8:15 AM)
- Memo**: (Empty text area)
- Tags**: (Empty text area with instruction: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar.")
- You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
- ☒ Include all occlusion relationships in the order
- ☒ Include Tags In The Order
- Buttons**: Cancel, OK

3. Selectează un partener.
4. Verifică informațiile despre produs din fila Lista de comenzi.
 - o Poți decide dacă vrei să împărtășești numele pacientului.
5. Verifică fișierele de comandat din fila Lista de fișiere.
6. Introdu data de livrare dorită.
 - o Valoarea implicită este setată la 7 zile de la data comenzii.
7. Poți adăuga o notă și etichete partenerului tău pentru a sublinia detalii specifice.
8. Atunci când rezultatele ocluzale multiple generate de aplicația de scanare, poți trimite toate rezultatele ocluzale deodată, bifând „Comandă toate rezultatele ocluzale”.
9. Continuă cu comanda.
 - o **Omite plata**: Continuă comanda fără a utiliza sistemul de plată pus la dispoziție de Medit Link. Disponibil atunci când comanzi de la un partener cu statutul „Contractat”.
 - o **Plată**: Utilizează sistemul de plată pus la dispoziție de Medit Link pentru a continua cu comanda. Disponibil în cazul în care comanzi de la un partener contractat.
 - o **OK**: Pregătim comanda fără nicio condiție privind prețul produsului. Disponibil atunci când comanzi de la un partener cu statutul „Parteneriat”.


iNotă

Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Omite plata
- Plătește


Confirmă comanda (In Box)

- Accept the order upon receiving it.
- Comenzile acceptate vor fi transmise către Work Box.

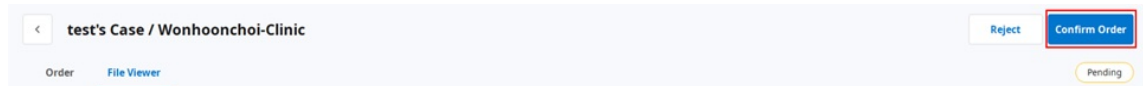


Anulează comanda (Order Box)

- Poți anula o comandă înainte ca partenerul tău să o accepte.
- Cazurile anulate pot fi comandate din nou.

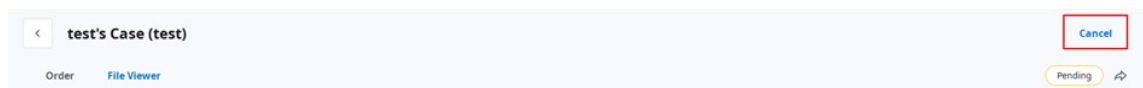


Refuză comanda (In Box)

- Poți respinge o comandă primită.
- Cazurile respinse pot fi comandate din nou.

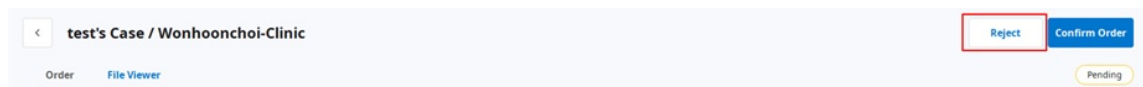

Verificarea cazurilor comandate

Poți verifica detaliile cazului pe care l-ai comandat de la Order Box în contul clinic. Poți verifica, de asemenea, cazul pe care l-ai primit din In Box în contul de laborator.

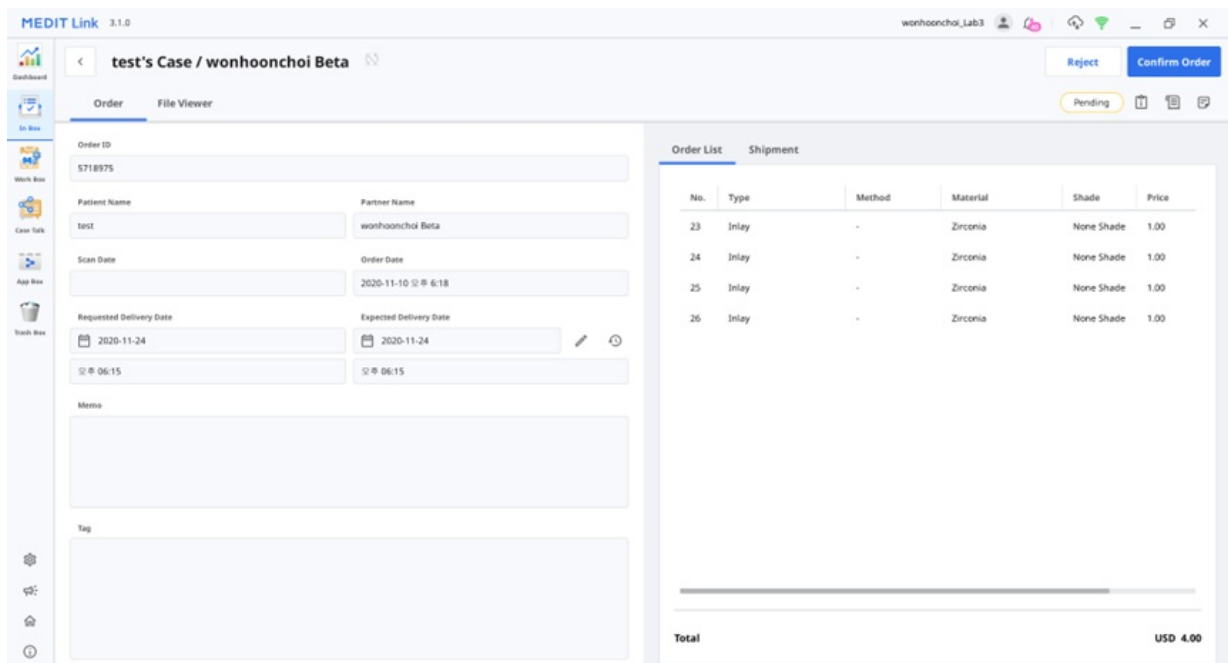

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Informații comandă	Informațiile care pot fi incluse în comandă sunt următoarele: ID-ul comenzii/numele pacientului/numele contului/data scanării/data comenzii/data livrării/data scadenței livrării/memo. Poți verifica detaliile produsului comandat și informațiile privind livrarea.
Listă comenzi	Lista de comenzi afișează detaliile produsului comandat.
Expediere	Introdu/verifică informațiile de expediere.

Introducerea informațiilor despre expediere (In Box)

Introdu informațiile de expediere a cazului finalizat și începe expedierea.

1. Clic pe fila Expediere.
2. Introdu informațiile despre expediere și clic pe „Înregistrează”.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Informațiile introduse sunt trimise partenerului tău.

Gestionarea datei de livrare

Poți stabili data de livrare preconizată atunci când plasezi o comandă, iar această informație va fi transmisă partenerului tău.

Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)

- Atunci când comanzi de la Case Box, poți introduce data de livrare dorită.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Valoarea implicită este de 7 zile de la data comenzii.
- Introdu data/ora la care dorești să primești produsele și continuă cu comanda.
- Poți seta cu ușurință ora cu ajutorul cursorului.

Setarea datei preconizate de livrare (cont clinică)

- Poți introduce data de livrare preconizată pentru cazul comandat de la In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Verifică data de livrare solicitată împreună cu partenerul și reprogramează cu ajutorul butonului „Editează”.



2. Introdu data de livrare preconizată, luând în considerare ziua lucrătoare efectivă. Dacă este necesar, poți lăsa și un comentariu.
3. Clic „Aplică”.

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

🕒 11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Data de livrare preconizată și nota vor fi transmise împreună cu comanda.
 - Poți verifica data și memo-urile în Order Box.
 - Poți modifica data de livrare preconizată, iar modificările vor fi transmise partenerului tău.
5. Poți verifica istoricul cazului folosind butonul „Istoric”.



Completarea cazurilor

Complet (Work Box/In Box)


După îndeplinirea tuturor sarcinilor, apasă „Gata” pentru a finaliza cazul.

Completează un caz din detaliile cazului

Poți găsi butonul „Meniu” în partea dreaptă a butonului „Deschide”.



Finalizează lucrarea făcând clic pe pictograma „Meniu” și selectând „Gata”.

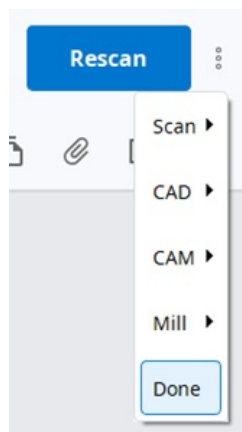


Completează cazurile multiple din lista de cazuri

Atunci când selectezi cazurile din Work Box, în partea de sus a listei apare butonul de meniu extins.



Completează mai multe cazuri după cum urmează:

1. Mergi la Work Box.
2. Selectează toate cazurile de completat.

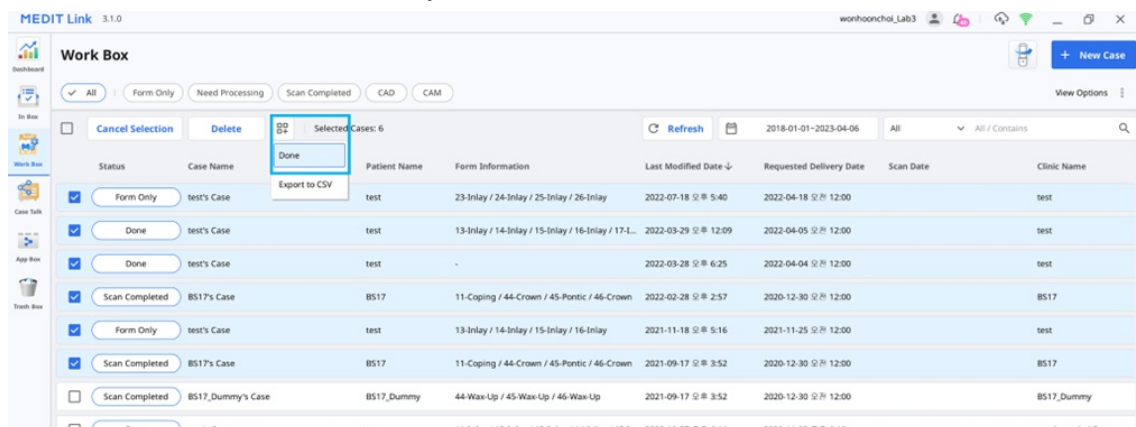

3. Clic pe butonul „Meniu extins” menționat mai sus.




4. Selectează „Gata” din listă

Complet (Case Box/Order Box)

După finalizarea cazului de la laborator, clinica trebuie să confirme cazul pentru a finaliza întregul proces de comandă.

În cazul în care laboratorul își finalizează activitatea, clinica poate găsi funcția „Confirmă livrarea” în Order Box.


Clic pe aceasta, întregul proces de comandă se finalizează, iar statutul cazului se va schimba în „Caz finalizat”.

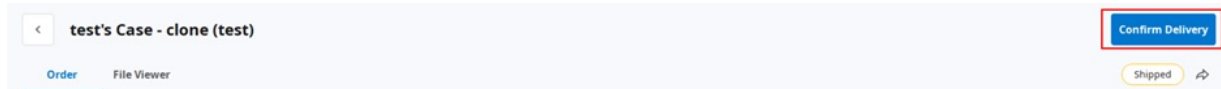

Termină un caz necomandat în Case Box

Pentru cazurile care nu sunt comandate la laborator, poți completa aceste cazuri din Case Box.

1. Mergi la Case Box.
2. Selectează cazul pe care dorești să îl completezi.

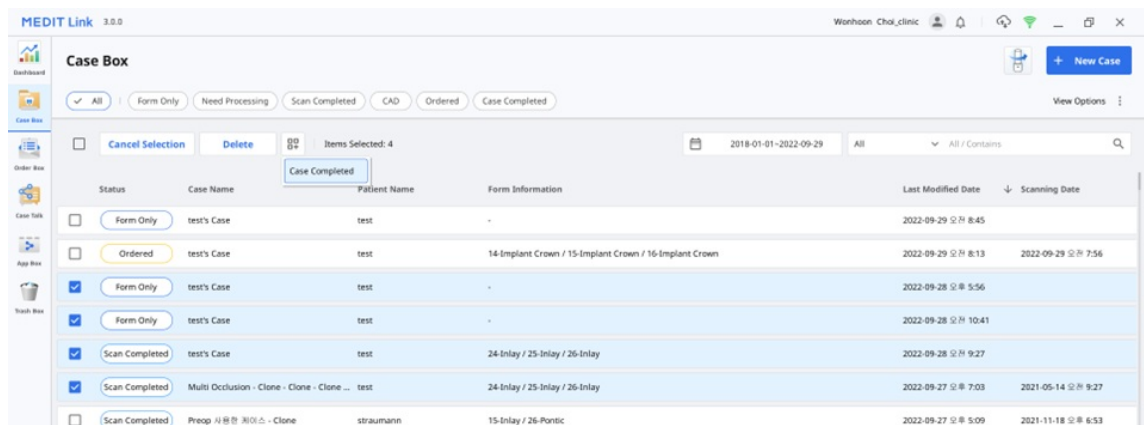

3. Clic pe butonul „Meniu extins”.




4. Alege „Caz completat”.

Comunică folosind etichete

Poți să adaugi informații suplimentare pentru cazul tău folosind etichete și să le trimiți partenerilor tăi.

Adaugă etichete la crearea unui caz nou

Poți introduce etichete atunci când creezi un caz nou sau când editezi informații despre caz.

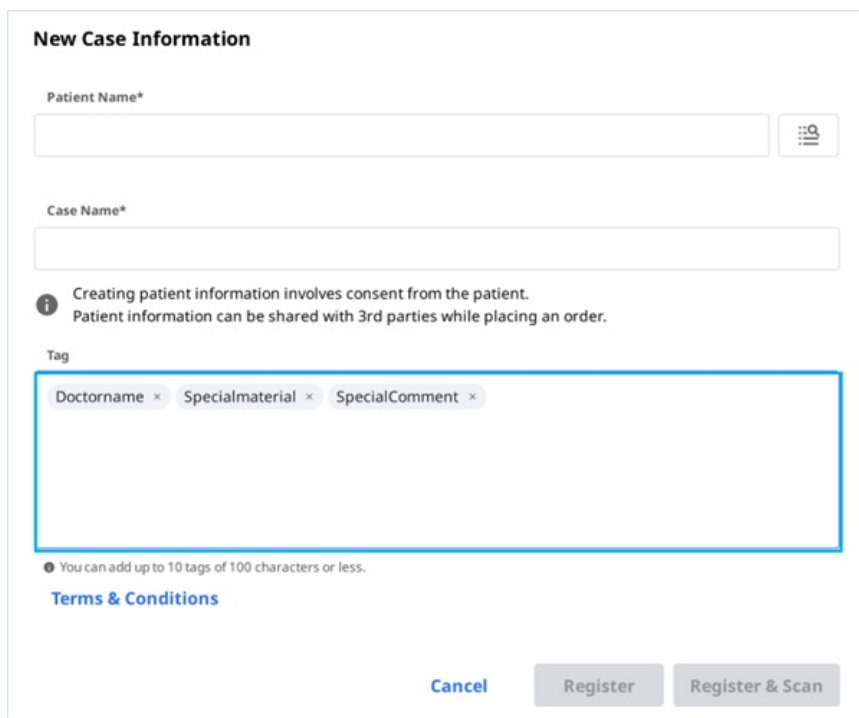

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Poți căuta și selecta cu ușurință etichete pe care le-ai mai folosit.

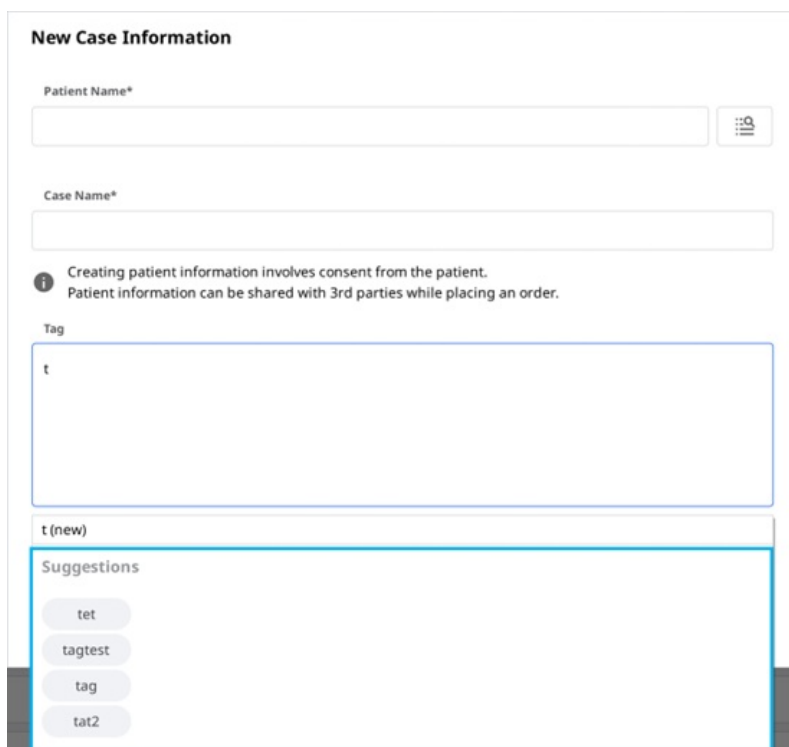

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Adaugă etichete la comandă

Poți verifica și edita etichetele în caseta de dialog Comandă în timpul comenzii.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR

[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Verifică etichetele de pe Detaliile cazului

