

USER GUIDE

Medit Link

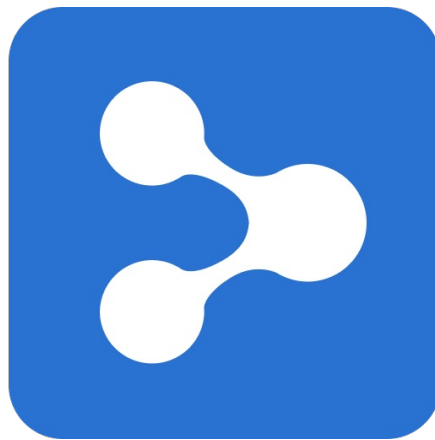


Table of Contents

Medit Link

Wprowadzenie	6
Medit Link	6
Omówienie usług	6
Usługa w chmurze	7
Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania	7

Medit Link > Instalacja

Wymagania systemowe	9
Wymagania systemowe dla Windows	9
Wymagania systemowe dla macOS	9
Wymagania systemowe dla serwisu internetowego	9
Zalecane dla przeglądarek	9
Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych	9
Instalacja w systemie Windows	10
Instalacja na macOS	12
Medit Link jest instalowany jako pakiet z Medit Scan for Clinics.	12

Medit Link > Serwis internetowy Medit Link

Omówienie	16
Dashboard	17
Omówienie pulpitu Dashboard	17
Medit Insights	17
Subskrybuj Medit Insights	18
Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights	19
Case Box/Work Box	20
Filtrowanie przypadków	20
Filtrowanie według statusu	20
Filtrowanie według czasu trwania	20
Filtruj według wyszukiwania	21
Szczegóły przypadku	21
Order Box/In Box	23
Szczegóły zamówienia	23
Zakładki w Order Box/In Box	23
Case Talk	24
Tworzenie Case Talk	24
Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania	25
Szczegóły Case Talk	27
Web Viewer	27
Adnotacja	28
Komentarze	29
Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym	30
Drzewo danych	30
Kontrola drzewa danych	30
Kontrola modelu 3D	31
Partnerzy	33
Wyszukiwanie partnerów	33
Moja lista partnerów	33
Zaproszenie od partnera	34
Członkostwo	35
Członkostwo	35
Mój plan	35

Przechowywanie w chmurze	36
Subskrybuj	37
Anuluj subskrypcję	39
Informacje o rozliczeniach	40
Jak dodać metodę płatności	41
Jak zmienić metodę płatności	43
Zrealizuj	44
Zarejestruj Kod Realizacji	44
Aktywuj Kod realizacji	45
Płatność	47
Szczegóły płatności (Konta klinik & Laboratoriów)	47
Informacje o koncie płatniczym (tylko konto Laboratorium)	47
Moje informacje	48
Moje konto	48
Moja organizacja (tylko konto administratora)	48
Mój skaner	49
Mój cennik (tylko administrator konta laboratorium)	49
Pozostałe menu	50
Powiadomienie & Aktualizacja	50
Informacje Medit	50
Pobierz Medit Link App	50

Medit Link > Medit Link App

Omówienie	52
Omówienie pola	52
Pasek tytułowy	54
Powiadomienia	54
Administrator synchronizacji przypadków	55
Prześlij	56
Pobierz	56
Status sieci	57
Menu	58
Dashboard	58
Case Box/Work Box	58
Zakładki w Case Box/Work Box	59
Funkcje w Case Box/Work Box	59
Order Box/In Box	60
Zakładki w Order Box/In Box	61
Case Talk	61
App Box	62
Trash Box	62
Ustawienia	63
Zarządzanie pacjentami	63
Dodaj nowego pacjenta	63
Usuń pacjenta	64
Łączenie pacjentów	64
Powiadomienie & Aktualizacja	65
Przejdź do strony Medit Link	65
Informacje Medit	65
Ustawienia	67
Ogólne	67
Zarządzanie pamięcią masową	68
Ustaw okres	68
Lokalna pamięć masowa	68
Przechowywanie w chmurze	69
Ustaw podłączony program	69

Opcje eksportowania	70
Narzędzie do konwersji przypadków	71
Jak używać narzędzia do konwersji przypadków	71
Opcje proxy	73
O programie	73
Podręcznik użytkownika	74
Przeglądarka plików	75
Drzewo danych	75
Narzędzia kontroli modelu	75
Kontrola modelu 3D	75
Kontrola obrazu 2D	76
Narzędzia funkcyjne	77
Przechwytywanie obrazu i Notatka	77
Przechwytywanie obrazów ortodontycznych	77
Wypełnij luki	78
Przycinanie	78
Optymalizuj dopasowanie okluzji	81
Ruch żuchwy	82
Zarządzaj danymi Wielu okluzji w przeglądarce plików	83
Jak zarządzać wieloma wynikami	83
Przeglądaj opcje	85
Filtry statusu	85
Pozycje tabeli	86
Typ przeglądania	87
Widok galerii	88
Widok listy	89
Grupowanie	89
Sortowanie	90
Filtrowanie i wyszukiwanie	92
Filtr według daty	92
Zaawansowane możliwości wyszukiwania	92

Medit Link > Przepływ pracy

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek	94
Tworzenie przypadków	94
Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)	94
Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)	95
Edycja przypadków	95
Edycja przypadku w Case Box (Klinika)	95
Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)	96
Klonowanie przypadków	97
Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)	97
Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)	97
Usuwanie przypadku	97
Usuń przypadek (klinika i laboratorium)	98
Formularz informacji	99
Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.	99
Wprowadź na zakładce Formularz	99
Wprowadź na zakładce CAD	99
Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.	99
Wprowadź na zakładce Formularz	99
Wprowadź na zakładce CAD	100
Łączenie zębów do mostu	100
Ustawianie opcji skanowania	100
Medit Scan for Labs	100
Ogólne opcje	100

Opcje według zębów	100
Dodawanie do ulubionych	101
Dodaj do ulubionych	101
Zarządzaj ulubionymi szablonami	101
Praca nad Skanowaniem/CAD	102
Proces skanowania	102
Proces CAD	102
Uzyskaj pliki wyników	103
Eksportuj pliki z wynikami skanowania	103
Eksportuj wybrane pliki	104
Eksport linii brzegowej	105
Eksportuj linię brzegową jako kolor	105
Eksportuj linię brzegową jako plik	106
Eksportuj listę przypadków jako CSV	107
Jak wyeksportować listę przypadków	107
Pobierz pliki z Medit Link Web	108
Case Box/Work Box	108
Web Viewer	108
Jak pobrać	109
Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami	111
Zamawianie przypadków	111
Potwierdź zamówienie (In Box)	112
Anuluj zamówienie (Order Box)	112
Odrzucenie zamówienia (In Box)	112
Sprawdzanie zamówionych przypadków	112
Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)	113
Zarządzanie terminem dostawy	114
Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)	114
Zakończenie przypadków	115
Zakończ (Work Box/In Box)	115
Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku	115
Zakończ wiele przypadków z listy przypadków	116
Zakończ (Case Box/Order Box)	116
Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.	116
Komunikuj się za pomocą tagów	118
Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku	118
Dodaj tagi podczas składania zamówienia	119
Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.	119

Wprowadzenie

Medit Link

Medit Link to narzędzie do współpracy zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy klinikami i laboratoriami, aby zapewnić optymalny przebieg pracy dla każdej ze stron.

Oferuje zróżnicowane funkcje w oparciu o typ i uprawnienia każdego konta. Program zapewnia przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania przepływem pracy, od skanowania za pomocą skanerów jamy ustnej i modeli, zamawiania przypadków, po projektowanie i wykonywanie protez.

Medit Link składa się z usługi internetowej i aplikacji komputerowej.

Omówienie usług

		Web	Aplikacja
		• Rejestracja i zarządzanie kontem • Wyszukaj • Wyszukaj i zarządzaj partnerami • Udostępniaj przypadki poprzez Przeglądarkę internetową z linkiem do udostępniania • Uzyskaj dostęp do przypadków wykonanych z aplikacji • Zarządzaj zamówieniami	• Wprowadź Formularz informacji • Skanuj • Składaj/odbieraj zamówienia i dokonuj płatności • Połącz się z CAD • Zarządzaj pacjentami
Klinika	Administrator	Szukaj i zarządzaj partnerami i swoją organizacją, zarządzaj informacjami o płatnościach i udostępniaj przypadki. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partnerzy - Członkostwo - Płatności - Moje Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj, połącz z CAD, składaj zamówienia, dokonuj płatności i zarządzaj pacjentami. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Zarządzanie pacjentami
	Członek	- Case Box - Case Talk - Moje informacje	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Laboratorium	Administrator	Szukaj i zarządzaj partnerami i swoją organizacją, zarządzaj informacjami o płatnościach i udostępniaj przypadki. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partnerzy - Członkostwo - Płatności - Moje Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj, połącz z CAD i odbieraj/zarządzaj zamówieniami. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Członek	- Work Box - Case Talk - Moje informacje	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Płatność

Usługa w chmurze

Medit Link obsługuje automatyczne przesyłanie/pobieranie baz danych i plików poprzez AWS (Amazon Web Services).

Dane przechowywane w chmurze są automatycznie synchronizowane z komputerami wielu użytkowników w organizacji, dzięki czemu mogą oni uzyskać dostęp do tych samych danych z dowolnego komputera w dowolnym czasie. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem chmury zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych. Zapewnia to bezpieczeństwo danych nawet w przypadku utraty danych w wyniku nagłej awarii komputera.

Usługa w chmurze umożliwia partnerskim dentystom i laboratoriom szybkie udostępnianie danych bez kłopotliwego przesyłania skanów pocztą elektroniczną lub manualnie. Wszystkie dane, w tym informacje o pacjentach, są bezpiecznie zaszyfrowane, przechowywane i przesyłane. Medit jest zgodny z przepisami i regulacjami medycznymi, takimi jak HIPAA i GDPR.

Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania

Medit Link oferuje własny system zamówień i płatności.

- Medit Link pozwala na tworzenie umów między dentystami i laboratoriami dentystycznymi oraz szybkie i łatwe udostępnianie danych.
- Możesz sprawdzać i zarządzać statusem zamówienia.

System wspierany kartami kredytowymi współpracuje z modułami płatniczymi platform płatności internetowych, takich jak Stripe (www.stripe.com) i I'mPort (<http://www.iimport.kr>), dzięki czemu obsługa płatności jest łatwa i wygodna.

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Płatność

Wymagania systemowe

iNota

Prosimy zapoznać się z wymaganiami systemowymi dla Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs, jeśli chcesz używać oprogramowania do skanowania ze swoim skanerem.

Wymagania systemowe dla Windows

	Laptop & Komputer stacjonarny
PROCESOR	Intel Core i5 2.6 GHz lub wyższy
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
GRAFIKA	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) lub wyższa / lub równoważna karta graficzna AMD
OS	Windows 8 64 Bit (nieдоступny w wersji 32 Bit) lub wyższy

Wymagania systemowe dla macOS

	Mac
Procesor	M1 z 8-rdzeniowym, 7-rdzeniowym GPU, 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
OS	Monterey 12

Wymagania systemowe dla serwisu internetowego

Zalecane dla przeglądarek

	Przeglądarki
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych

Typ	Android	iOS
Urządzenie	Odpowiednik Galaxy S7 lub nowszy	Odpowiednik iPhone'a 7 lub wyższy
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
PAMIĘĆ RAM	3 GB lub więcej	2 GB lub więcej
AP	Powyżej Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalacja w systemie Windows

Medit Link jest instalowany w pakiecie z programami do pozyskiwania skanów - Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs.


1. Uruchom Medit_LinkSetup.exe.
2. Wybierz język instalacji.
3. Wybierz folder do zainstalowania Medit Link. Przeczytaj i zaakceptuj zasady i warunki licencji i kliknij "INSTALUJ".

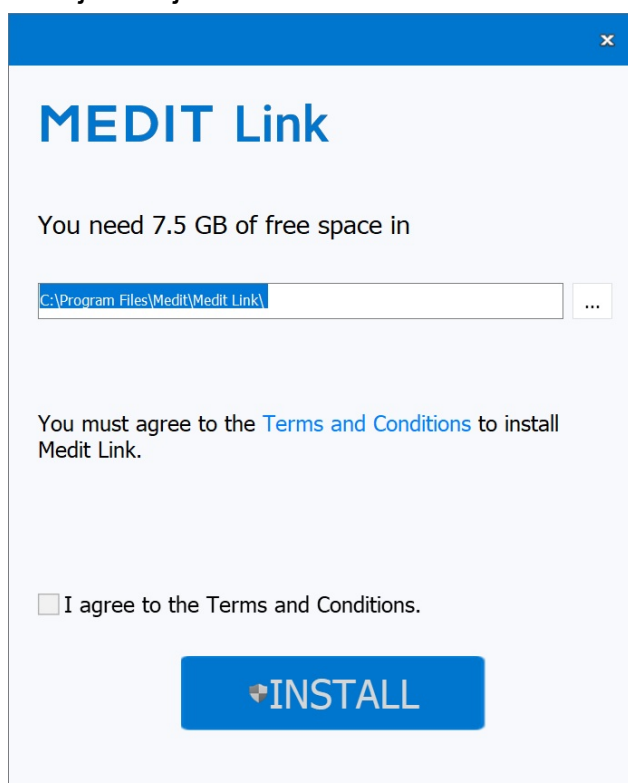

4. Upewnij się, że kabel skanera jest odłączony od komputera przed przejściem do następnego kroku. Instalacja może nie postępować, jeśli skaner jest podłączony do komputera.
5. Program zostanie zainstalowany automatycznie i może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj ani nie odłączaj komputera do momentu zakończenia instalacji.

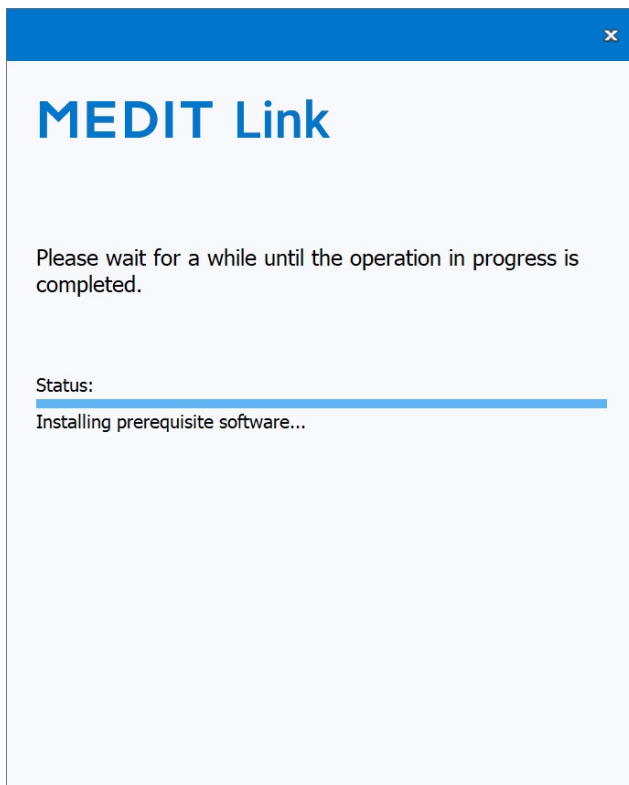

6. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer. Możesz kontynuować bez ponownego uruchamiania komputera, jeśli nie masz skanera.

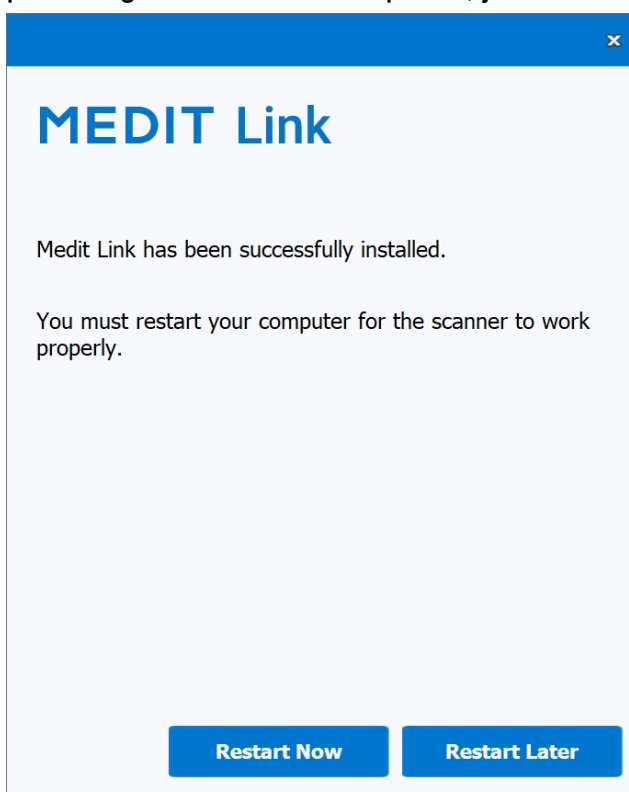


iNota

Jeśli po zakończeniu instalacji nie uruchomisz ponownie komputera, skaner może nie działać prawidłowo.


Instalacja na macOS

Medit Link jest instalowany jako pakiet z Medit Scan for Clinics.


1. Uruchom Medit_Link_x.x.x.pkg i kliknij "Dalej".

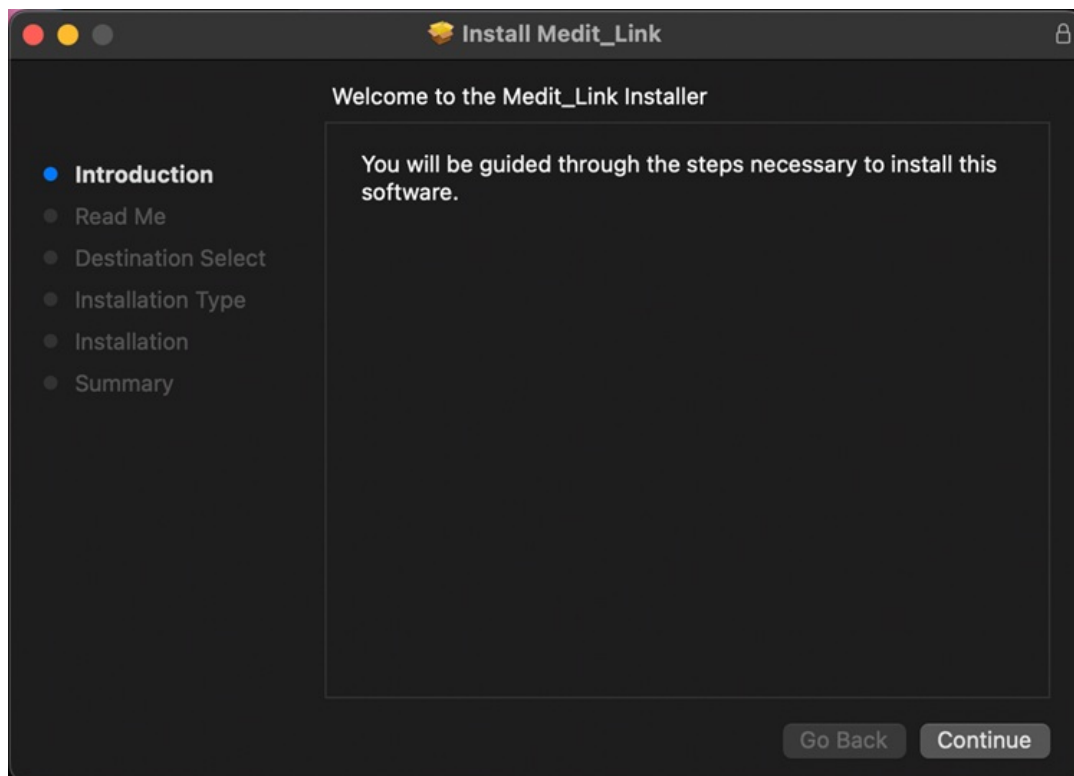


2. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij "Dalej".

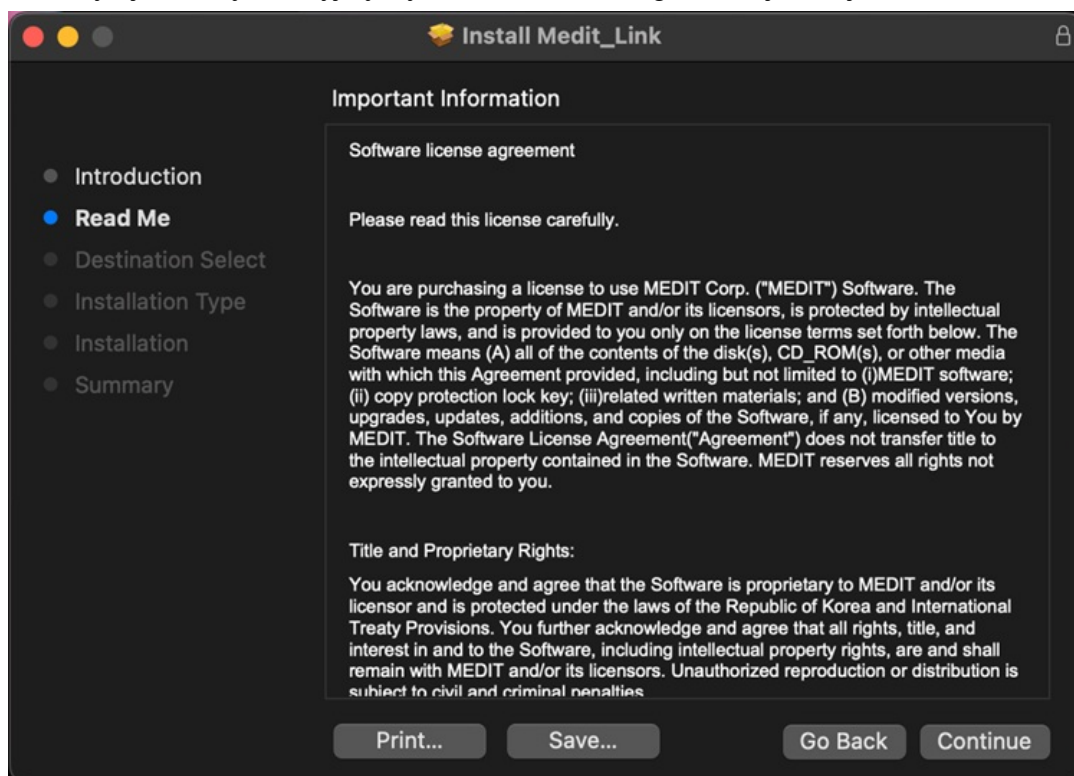

3. Wybierz dysk do instalacji i kliknij "Dalej".

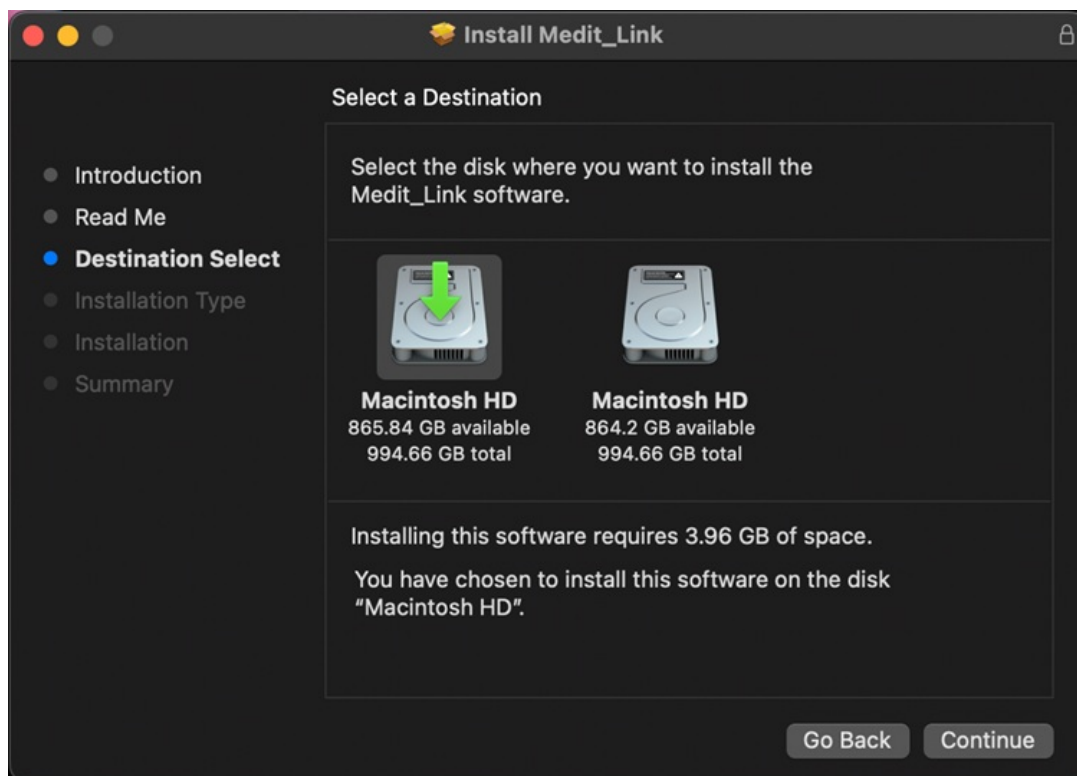


4. Kliknij "Zmień lokalizację instalacji...", aby zmienić miejsce docelowe instalacji.

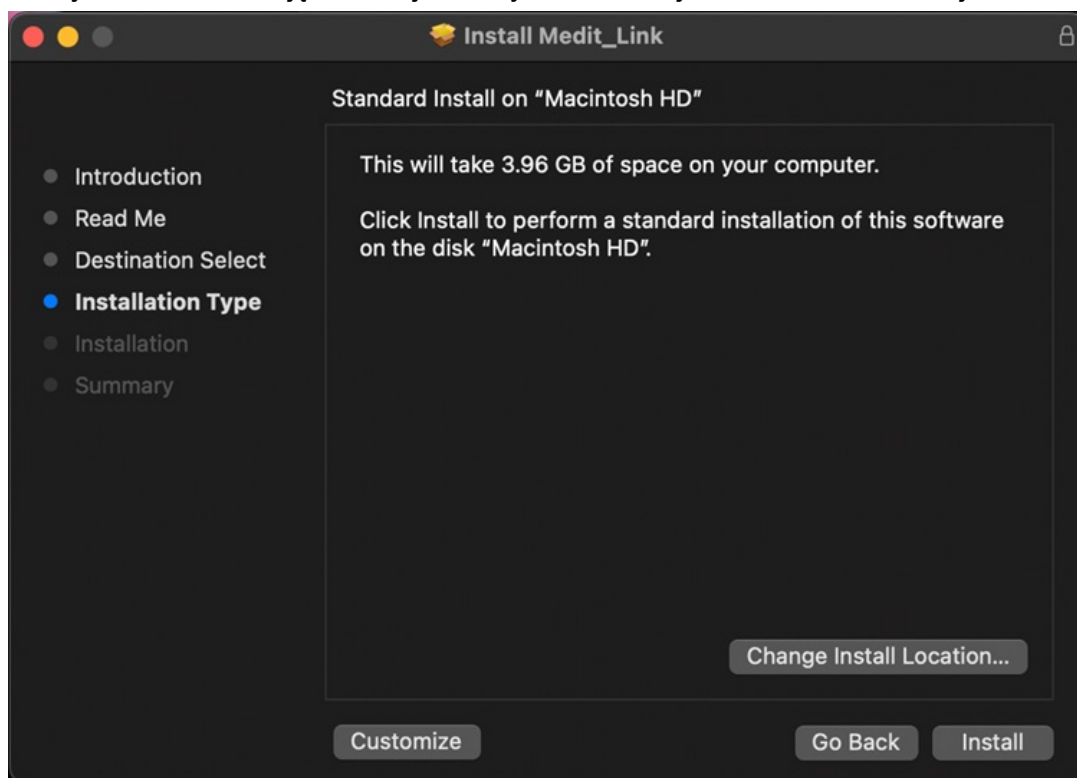


5. Kliknij "Instaluj" i wpisz swoje hasło do komputera Mac, aby zezwolić na instalację, jeśli będzie to wymagane.




6. Poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona.

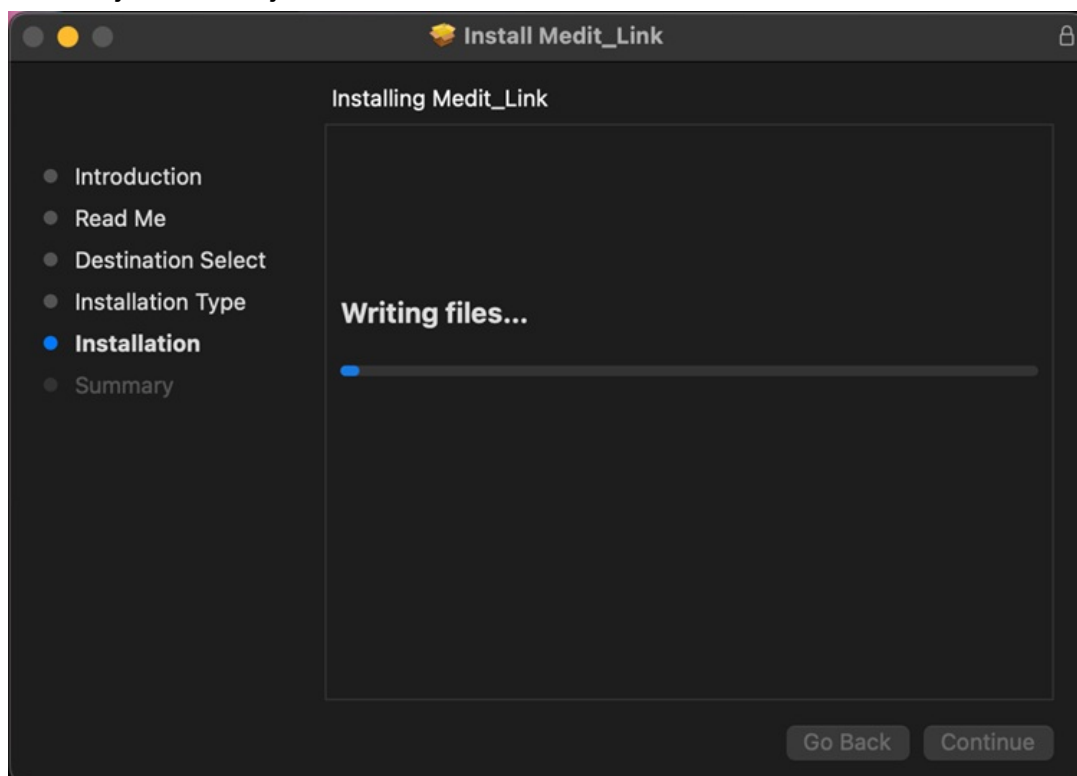

7. Kliknij "Zamknij", aby wyjść z okna instalacji.

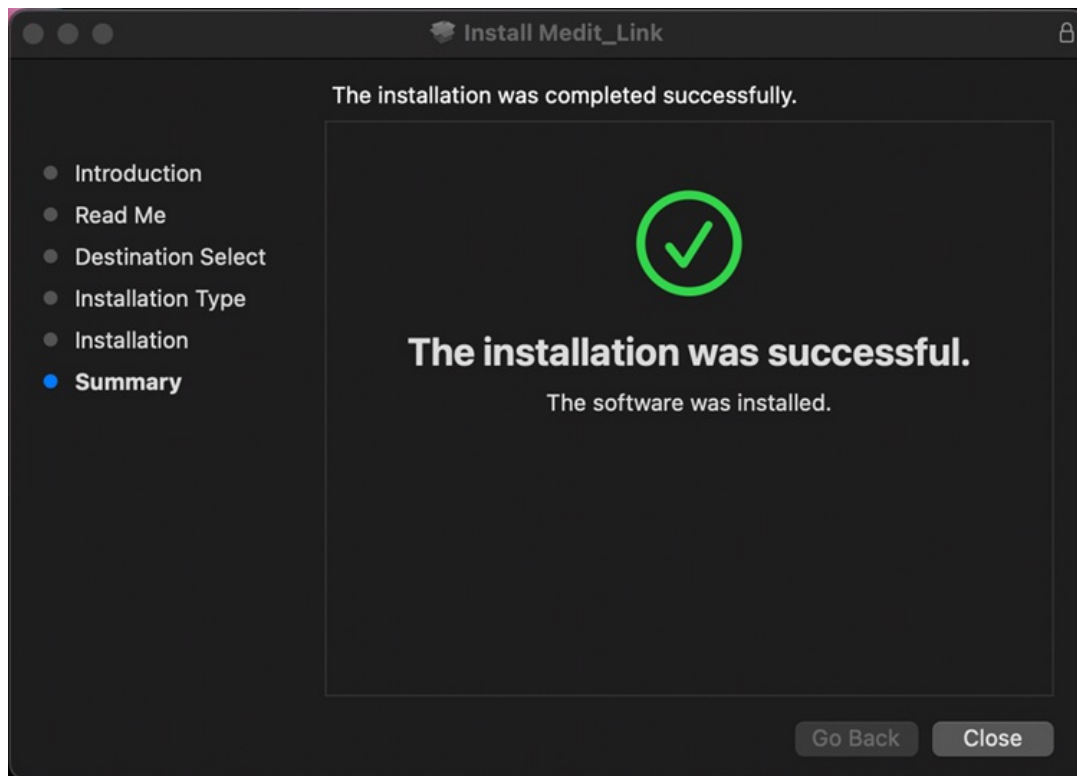

Omówienie

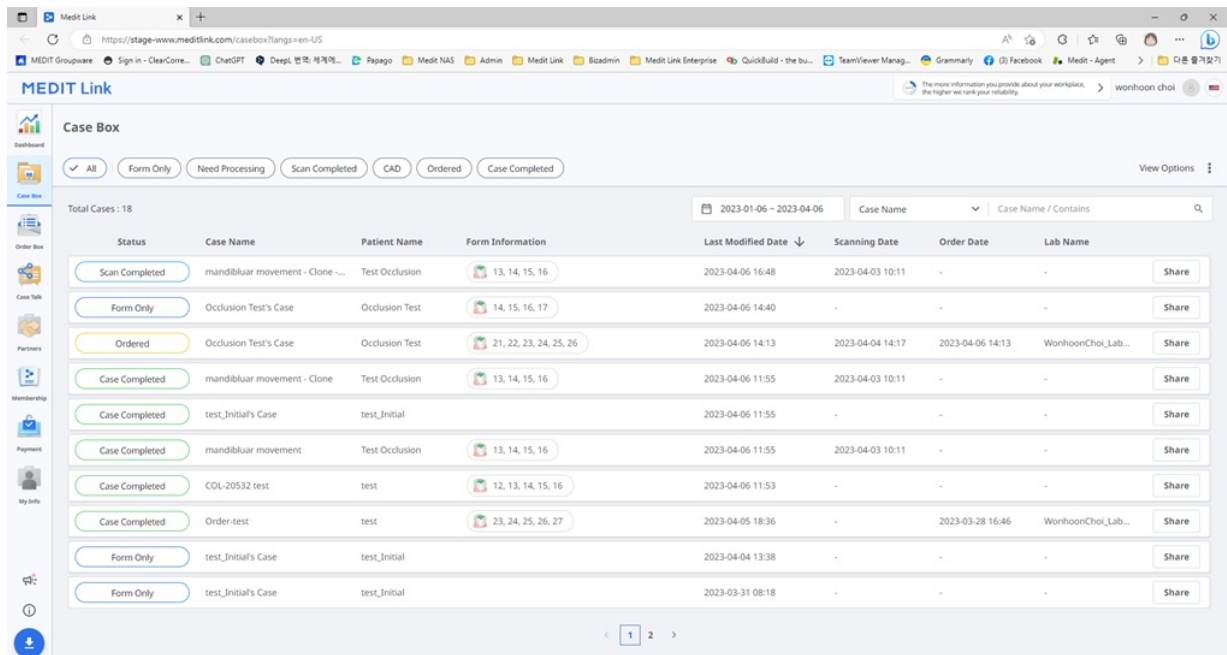


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link application. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main area shows a table of cases with filters for status (All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed) and a date range (2023-01-06 to 2023-04-06). The table lists 18 cases, showing details such as Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. Each case entry also includes a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Scan Completed	mandibular movement - Clone - ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-

Dashboard

Omówienie pulpitu Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej na Medit Link w zwizualizowanych wykresach i tabelach - zarówno w aplikacji Medit Link App jak i Web.

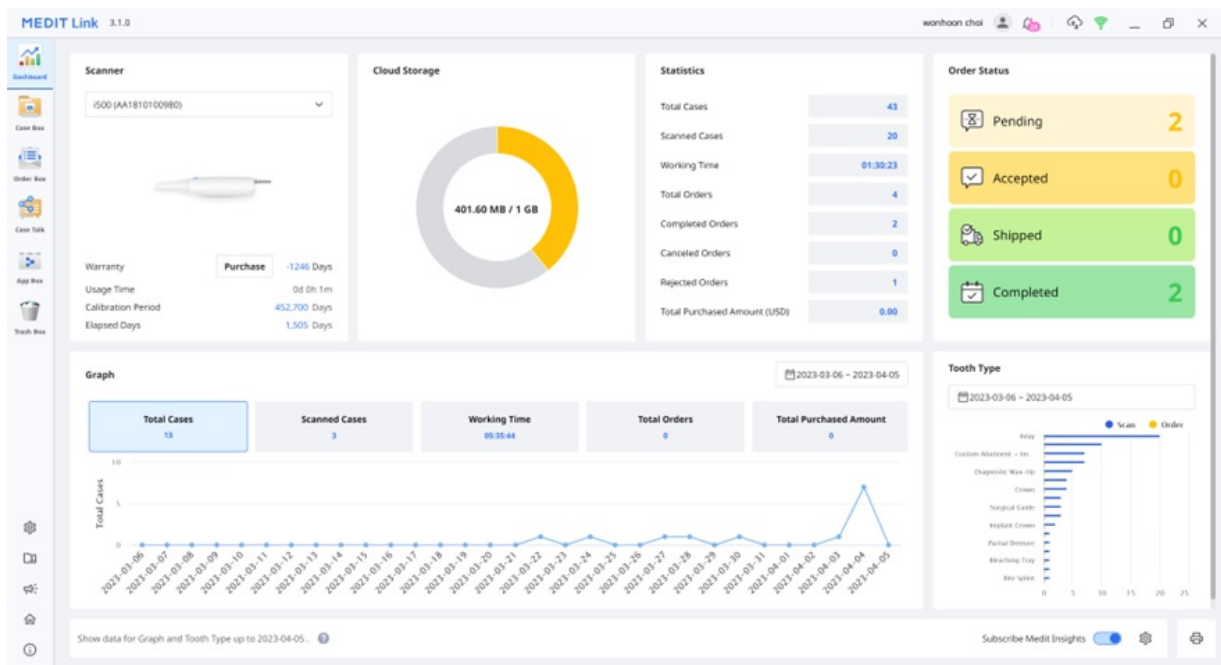

Wykresy i tabele na dashboard pokazują statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link.

Skaner	Podaje informacje o aktywnych skanerach, w tym gwarancję, czas użytkowania skanera, interwał kalibracji i czas, jaki upłynął od kalibracji.
Przechowywanie w chmurze	Wyświetlanie całkowitej pojemności chmury i ilości w użyciu.
Statystyki	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu pracy.
Status zamówienia	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu zamówienia.
Wykres	Wykres informacji o pracy według okresu.
Typ zęba	Udostępnianie statystyk dotyczących liczby skanów i zleceń według informacji o leczeniu.


Medit Insights

Medit Insights to usługa raportowania, która pomaga analizować statystyki użytkowania.

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Medit Insights

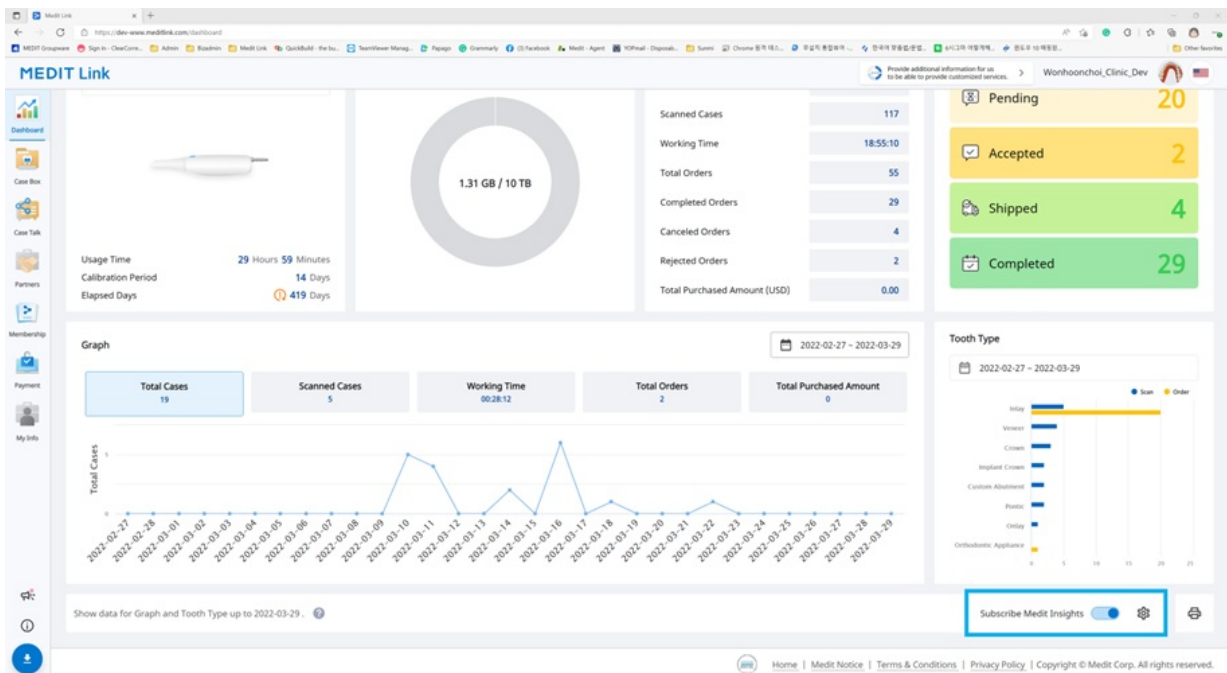

Subskrybuj Medit Insights

Możesz otrzymać maila z raportem drugiego dnia każdego miesiąca. Nie jest wymagany żaden dodatkowy proces rejestracji. Wystarczy włączyć opcję "Subskrybuj Medit Insights".

Jeśli nie korzystasz z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta Medit Link, możesz ustawić inny adres e-mail do otrzymywania Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Drugiego dnia każdego miesiąca otrzymasz e-mail ze statystykami jak poniżej.

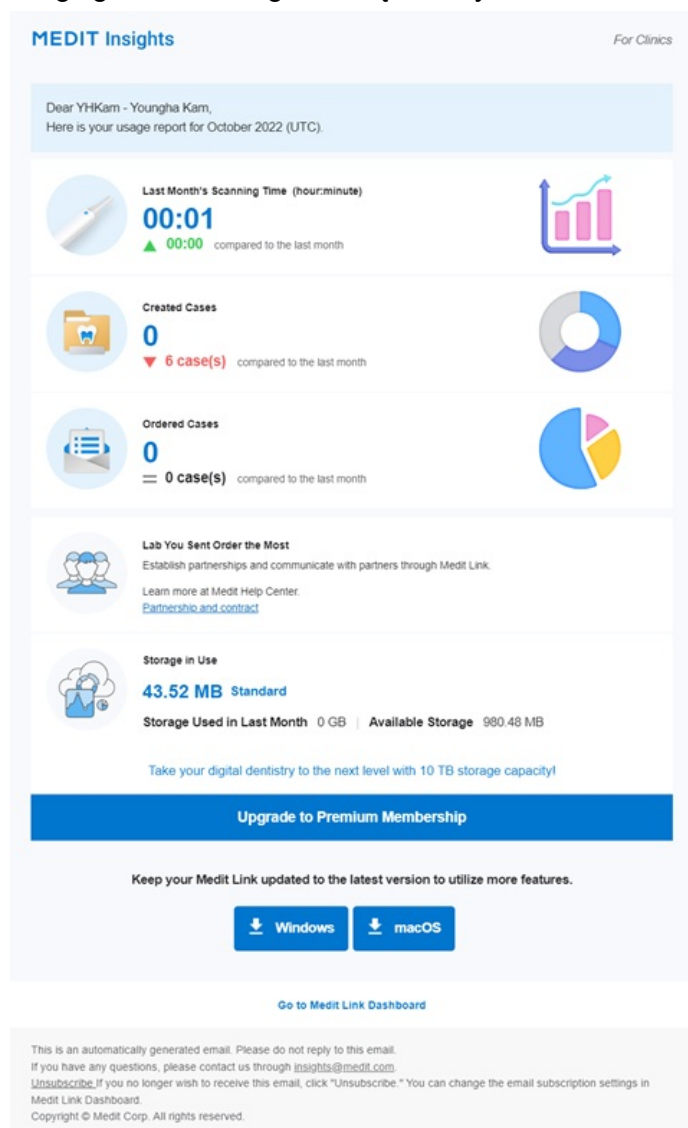


Banner	Medit dostarcza tutaj przydatne wskazówki i informacje. * Jeśli nie chcesz widzieć banera, usuń zaznaczenie pola wyboru Umowa ws. marketingu i promocji w Moje informacje> Moje konto.
Informacje statystyczne	Wyświetlane są informacje statystyczne, takie jak czas skanowania, utworzone przypadki, najczęściej zamawiane laboratorium itp.
Pobieranie Medit Link	Przycisk udostępnia link do pobrania Medit Link.
Dashboard	Wszystkie informacje statystyczne są oparte na informacjach z pulpitu Dashboard. Więcej szczegółów możesz zobaczyć w Dashboard.

Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights

Wyłącz "Subskrybuj Medit Insights" w Dashboard lub kliknij "Zrezygnuj z subskrypcji" w otrzymanej wiadomości e-mail.

Case Box/Work Box


Case Box (Klinika) lub Work Box (Laboratorium) pokazuje wszystkie przypadki, które użytkownik utworzył w aplikacji MEDIT Link. Pliki możesz oglądać za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu.

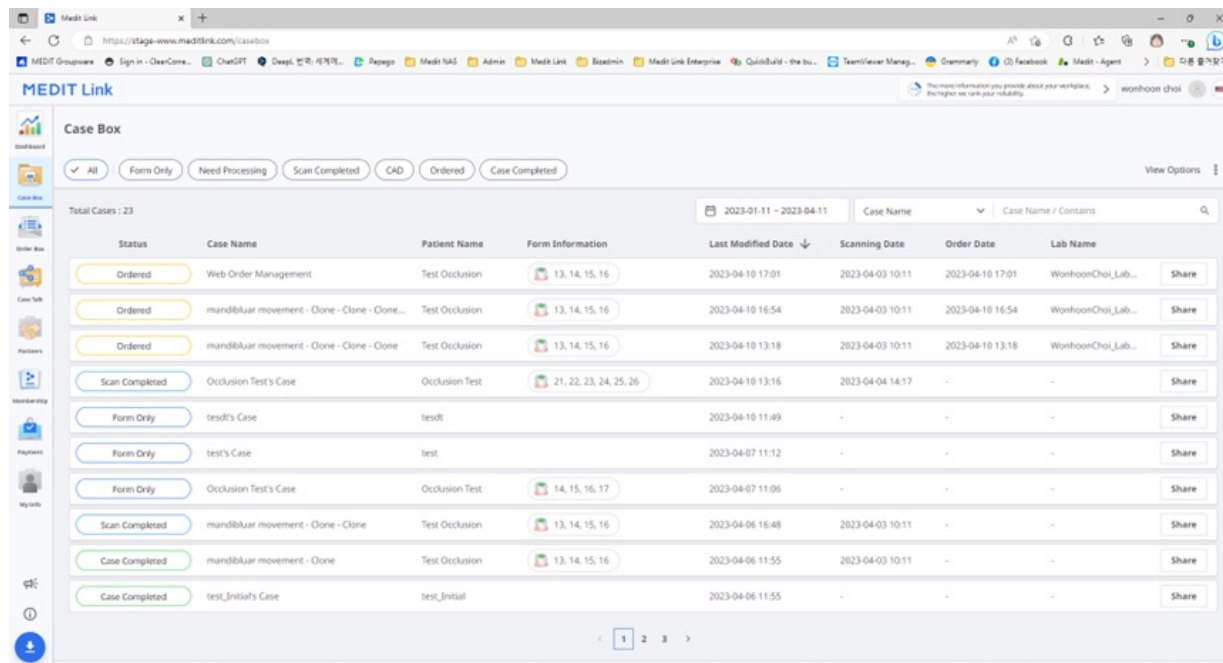

Filtrowanie przypadków

Filtrowanie według statusu

Możesz filtrować przypadki na podstawie ich statusu.

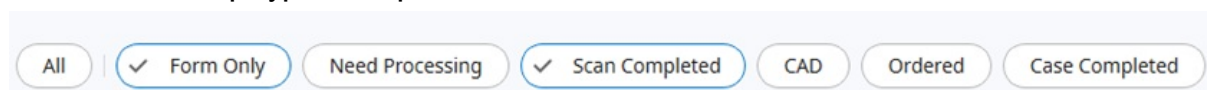

- Użytkownik może kliknąć status, który chce zobaczyć. Przeglądarka wyświetli tylko przypadki z wybranym statusem.
- Użytkownik może wybrać wiele statusów jednocześnie.

Następujący typ statusu jest udostępniany w oparciu o typ konta:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Laboratorium)	Wszystkie/ Tylko formularze/ Wymagają przetwarzania/ Skanowanie zakończone/CAD/ Wykonane

Filtrowanie według czasu trwania

Możesz filtrować i wyświetlać przypadki, które były ostatnio modyfikowane w ustalonym okresie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.



2. Wybrać przedział.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- **Wszystko:** Pokazuje wszystkie przypadki.
- **Przedział niestandardowy:** Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- **Dzisiaj:** Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- **Wczoraj:** Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane z wczorajszą datą.
- **Ostatnie 7 dni:** Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- **Ostatnie 30 dni:** Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- **Ostatnie 90 dni:** Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- **Ten miesiąc:** Pokaż przypadki z tego miesiąca.
- **Poprzedni miesiąc:** Pokaż przypadki z poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Filtruj według wyszukiwania

Możesz wykorzystać możliwości wyszukiwania, aby łatwo i szybko wyszukać potrzebne informacje.


Case Name

Case Name / Contains

Opcje wyszukiwania na podstawie konta kliniki/laboratorium:

Case Box (Klinika)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium
Work Box (Laboratorium)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia

Szczegóły przypadku

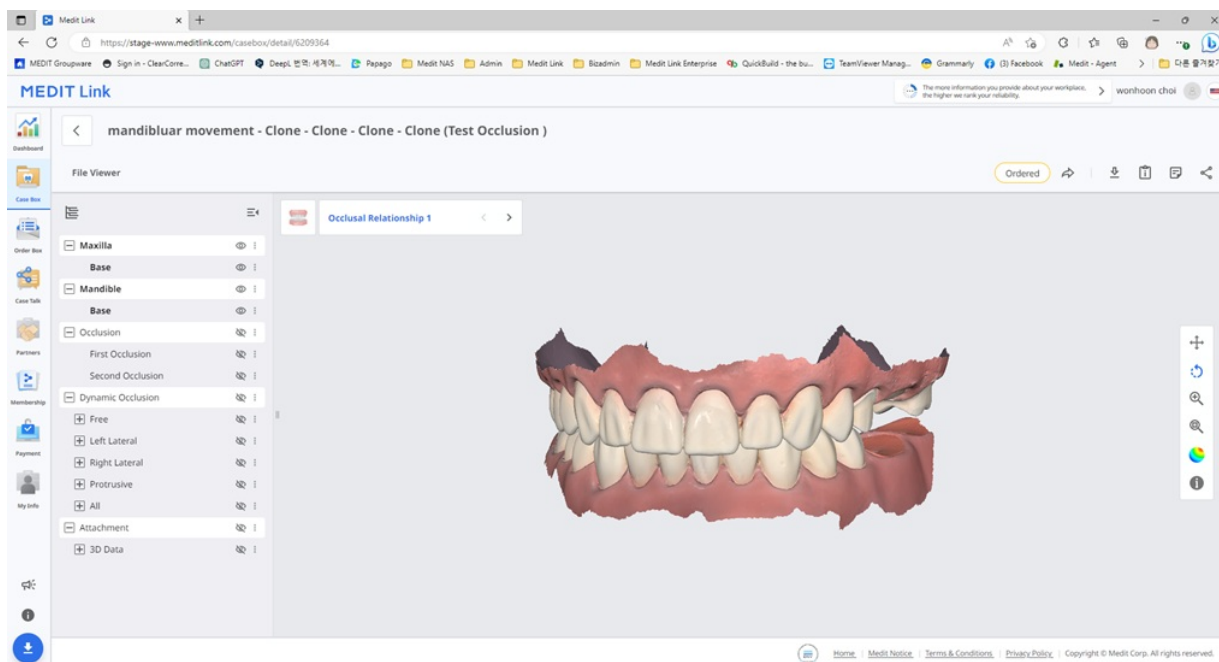

Następujące narzędzia do zarządzania przypadkami są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokaż status przypadku.
	Przejdź do szczegółów	Zapewnij skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Pobierz	Pobierz pliki z przypadku na lokalny komputer stacjonarny.
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki & Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy z udostępnionym linkiem mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Możesz udostępnić link swobodnie każdemu lub tylko określonym osobom. Kod PIN lub data ważności linku mogą być ustawione w celu zabezpieczenia prywatnych informacji.

Order Box/In Box

Order Box (Clinic) lub In Box (Lab) pokazuje zamówione przypadki w aplikacji Medit Link.

Szczegóły zamówienia

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top bar includes a search bar with the text 'test (test)' and a 'Cancel' button. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area is divided into two sections: 'Order' (left) and 'Order List' (right). The 'Order' section contains fields for Patient Name, Partner Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The 'Order List' section displays a table of orders with columns: No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The table lists 8 orders, all with a price of 0.00. The interface also includes a sidebar with navigation icons and a top bar with a search bar and a 'Cancel' button.

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
3	Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
5	Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
6	Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.


Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak identyfikator zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom wskazanym przez Ciebie, każdemu kto posiada udostępniony link lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez "Case Talk" w Medit Link App i Medit Link Web.

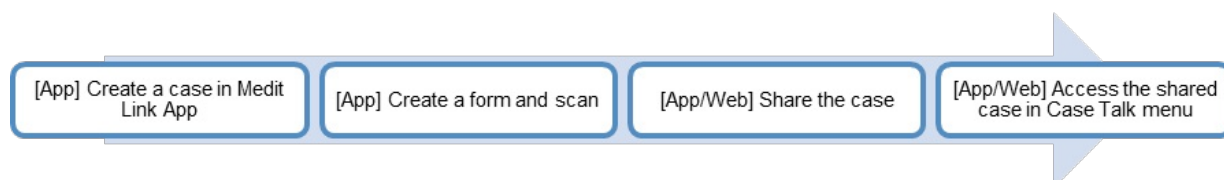


Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.


Tworzenie Case Talk

Możesz utworzyć link udostępniający do przypadku, który został utworzony w Case Box/Work Box.

1. Znajdź przypadek, który chcesz udostępnić i kliknij przycisk "Udostępnij" po prawej stronie.

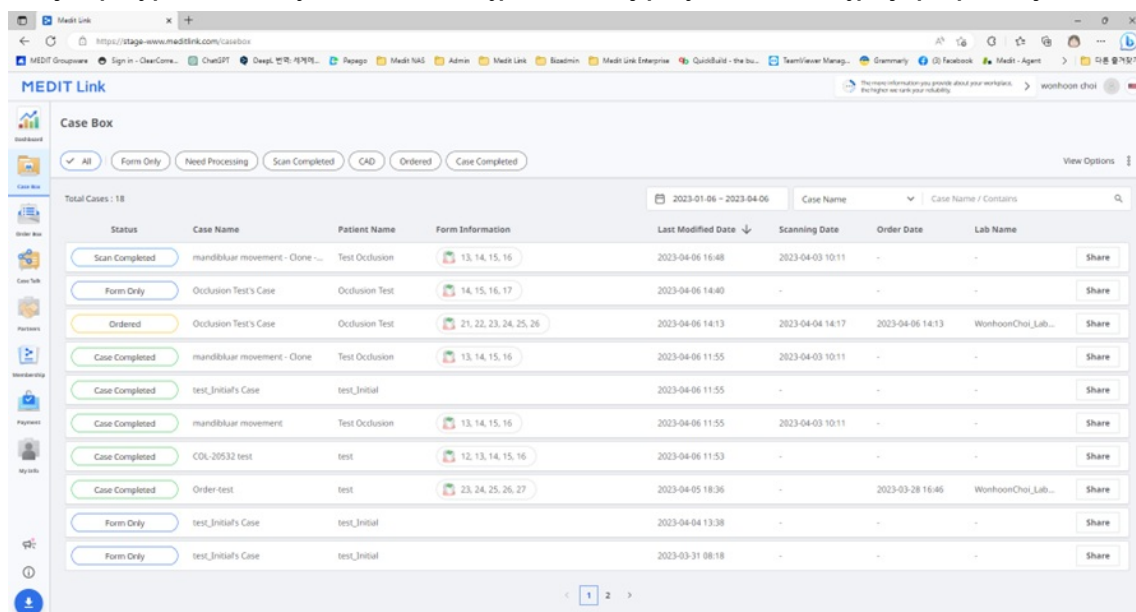

2. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.

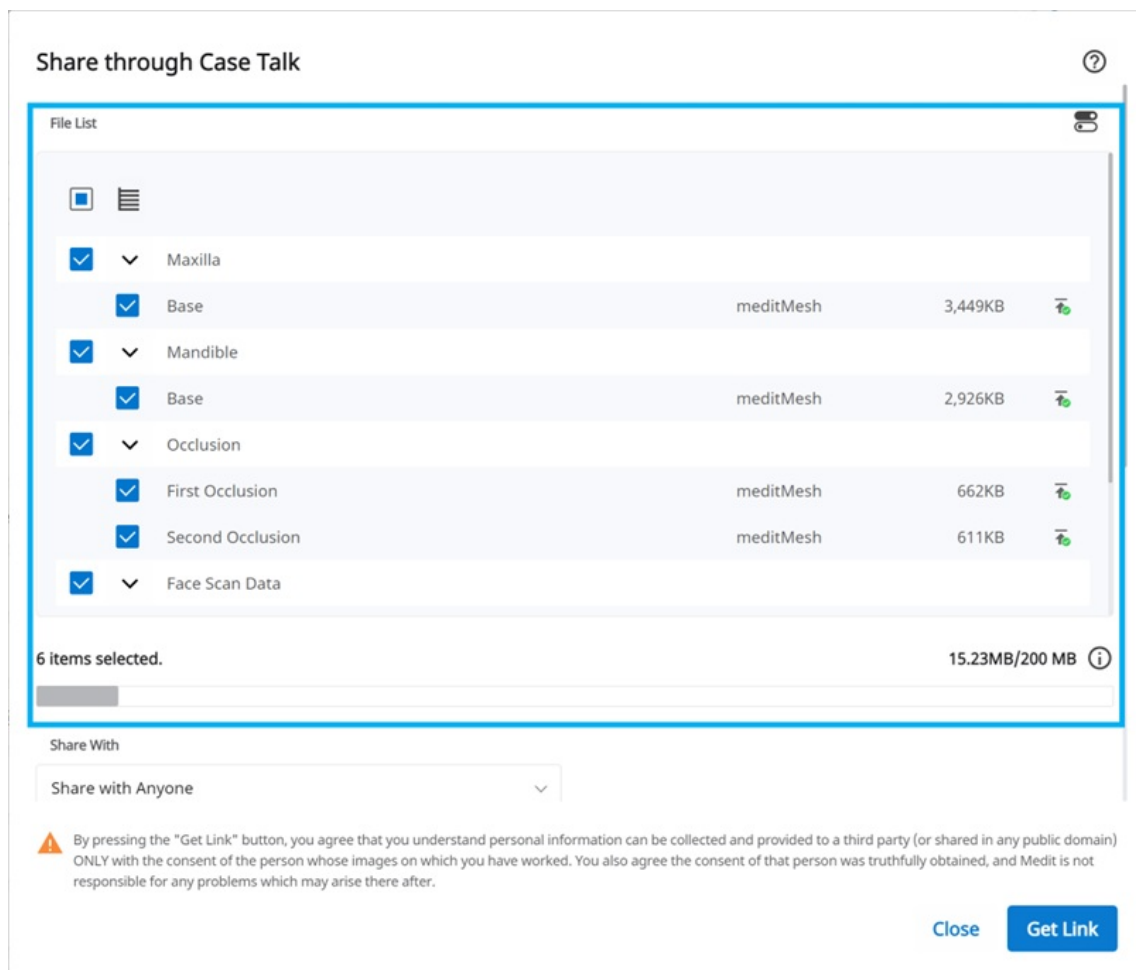

3. Ustaw typ uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania.
4. Kliknij "Uzyskaj link", aby utworzyć link udostępniający.

Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close
Get Link


Udostępni dla	- Udostępni wszystkim Tworzy link udostępniający. Możesz udostępnić pliki każdemu. - Udostępni wybranym osobom Tworzy i wysyła link udostępniający do określonych osób.
Udostępni za pośrednictwem	Jeśli wybierzesz opcję "Udostępni wybranym osobom", możesz udostępnić link wybranym osobom na różne sposoby. - Adres e-mail - SMS - Partnerzy
Data ważności	Ustaw datę ważności linku. Po wygaśnięciu linku osoby, którym go udostępniłeś, nie będą miały już dostępu do plików. Możesz przedłużyć okres ważności do 90 dni od dzisiaj.
Kod PIN	Ustaw 6-cyfrowy kod dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Udostępni imię i nazwisko pacjenta	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie osoby posiadające link będą widziały imię i nazwisko pacjenta.
Udzielenie pozwolenia na pobieranie	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszyscy użytkownicy posiadający link mogą pobierać pliki.
Zezwalaj na komentarze	- Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł komunikować się za pośrednictwem udostępnionego linku. - Jeśli odznaczysz tę opcję, odbiorca będzie mógł jedynie zobaczyć Twoje komentarze, ale nie będzie mógł dodać własnych.

Uwagi

Możesz zostawić wiadomość w sekcji komentarzy.

Szczegóły Case Talk

Można zobaczyć pliki w udostępnionym przypadku. Następujące funkcje są dostępne na stronie szczegółów Case Talk.

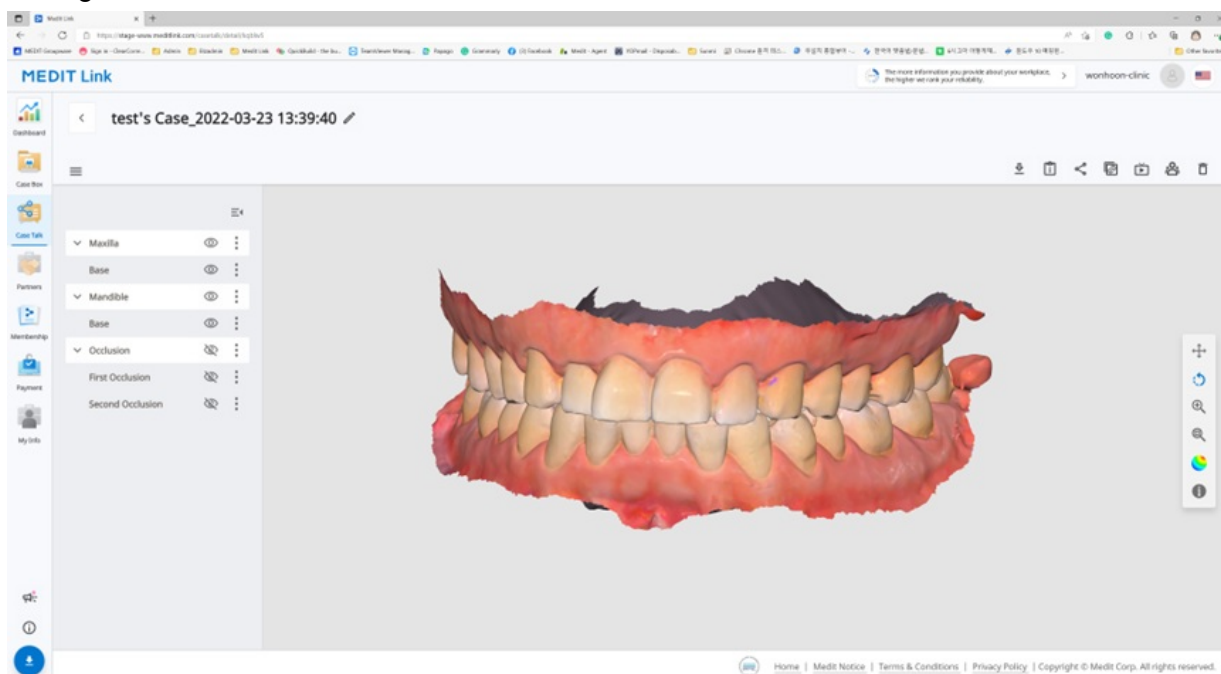

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z tego przypadku na komputer stacjonarny.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kopiuje link	Kopiuje udostępniony link do schowka. Skopiowany link pokazuje udostępnione pliki w przeglądarce internetowej.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do udostępnionego łącza.
	Usuń	Usuń udostępniony link. Usunięty link udostępniający nie jest już dostępny.

iNota


Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

- Na żywo
- Uczestnicy

Web Viewer

Możesz zobaczyć udostępnione dane poprzez Case Talk w przeglądarce internetowej.

Istnieje możliwość komunikacji z osobami mającymi dostęp do łącza za pomocą adnotacji i komentarzy.

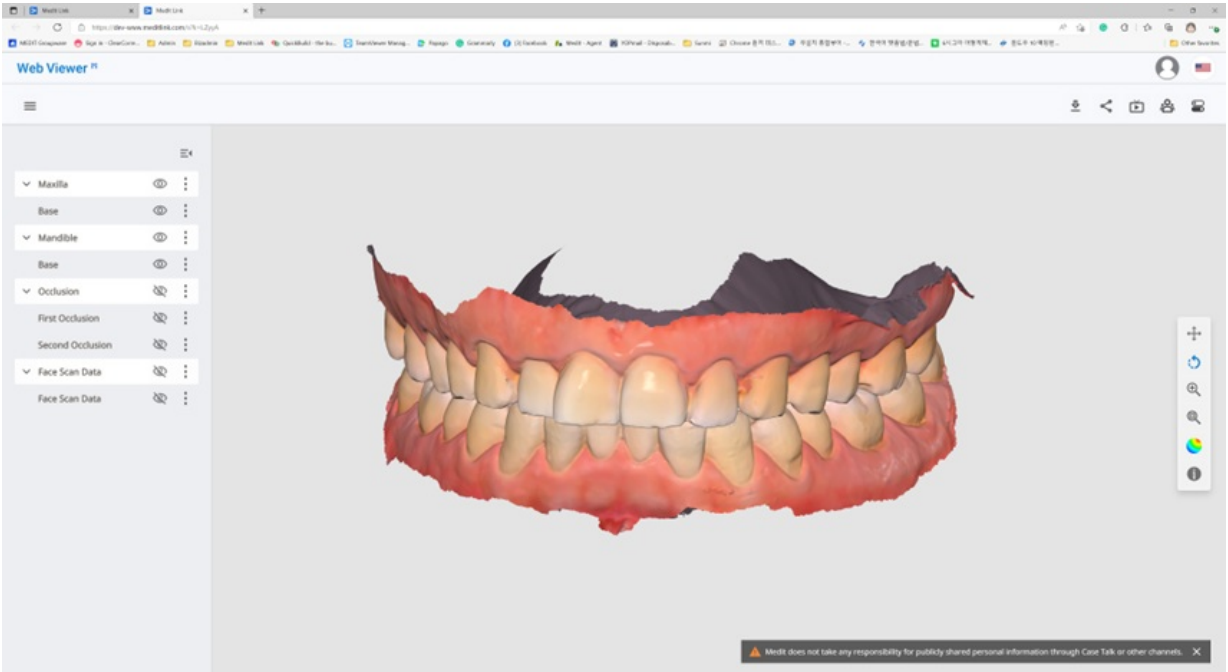

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z tego przypadku na komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy są połączeni z udostępnionym linkiem.
	Oznakowanie zęba	Zmień system znakowania zębów.


iNota

Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

- Na żywo
- Uczestnicy

Adnotacja

Możesz dodać adnotacje do określonego miejsca na modelu 3D. Każda osoba posiadająca link może zobaczyć dodane przez Ciebie adnotacje.

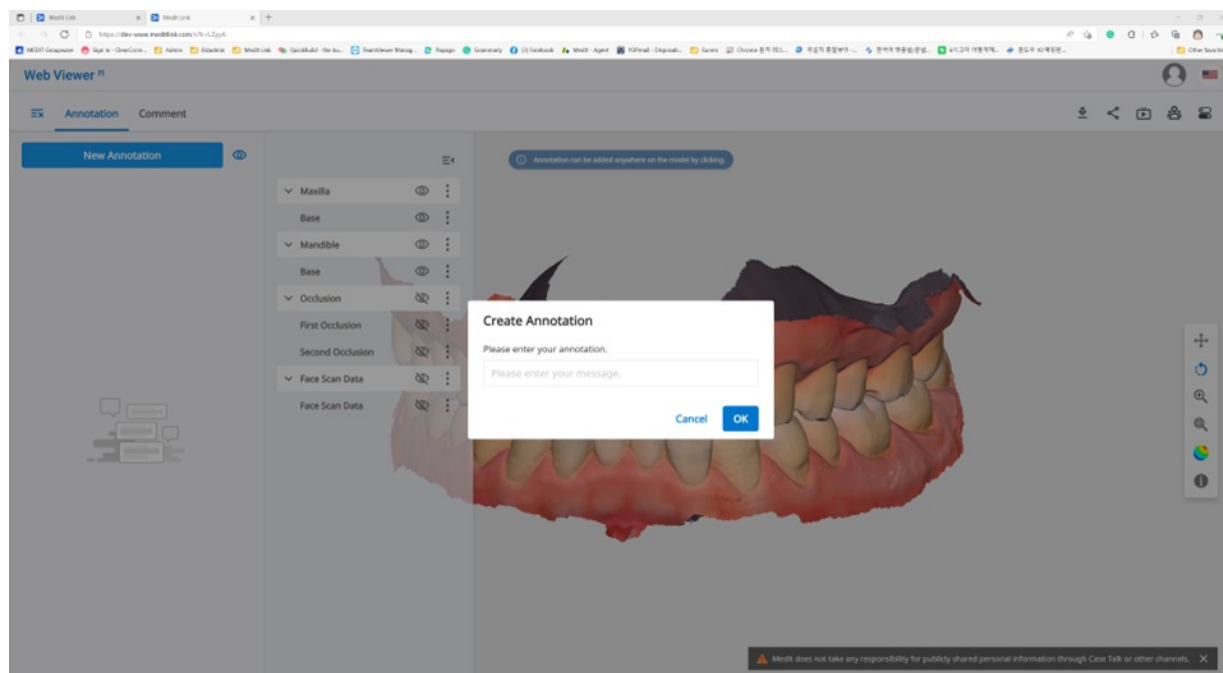

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Adnotacja

1. Znajdź ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz zakładkę "Adnotacja". Użyj przycisku "Nowa adnotacja", aby dodać adnotację w dowolnym miejscu na danych za pomocą kliknięcia.
2. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij "OK", aby ją zapisać.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. Możesz użyć adnotacji jako prostego kanału komunikacyjnego. Kliknij utworzoną adnotację, aby wprowadzić odpowiedź i naciśnij "Wyślij".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Komentarze

Możesz komunikować się z użytkownikami, którzy mają dostęp do linku poprzez zakładkę "Komentarz" w menu Web Viewer.

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Uwagi

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym


Możesz udostępniać swój ekran w czasie rzeczywistym.

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Na żywo

1. Kliknij "Na żywo", aby udostępnić ekran przeglądarki internetowej podłączonym użytkownikom.

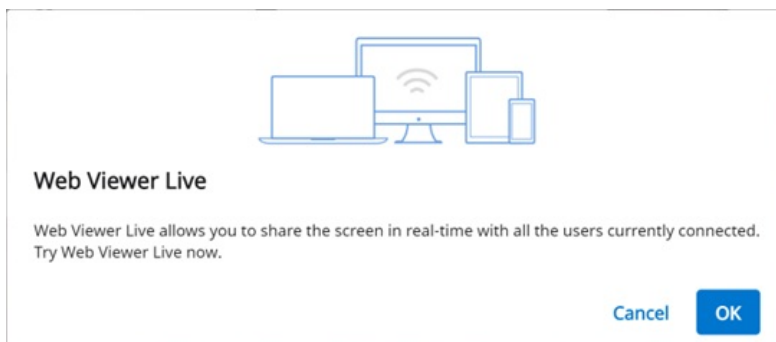



2. Kliknij "OK", aby rozpocząć udostępnianie ekranu.
3. Inne osoby, które uzyskały dostęp do linku, muszą zaakceptować udostępnienie ekranu.
4. Ekran użytkownika, który zainicjował udostępnianie ekranu, jest wyświetlany synchronicznie z ekranem osoby, która otrzymała wniosek.

Drzewo danych





Wszystkie dane są grupowane i wyświetlane według atrybutów w drzewie danych. Możesz pokazać lub ukryć dane, dostosować nieprzezroczystość i tak dalej.

Kontrola drzewa danych

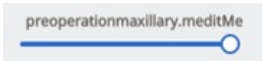Pokaż/Ukryj	Kliknij ikonę "oka", aby pokazać lub ukryć dane z widoku. Kontroluj widoczność danych jako grupy lub pojedynczych plików.
Nieprzezroczystość	Najedź myszką na widoczny element, aby zobaczyć suwak nieprzezroczystości. Wyreguluj suwak, aby zmienić przezroczystość swoich danych. 

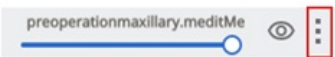Rozszerzone menu	Rozszerzone menu znajduje się po prawej stronie każdego elementu drzewa danych. Zawiera on następujące opcje:  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane poza bieżącymi. • Ukryj: Ukryj bieżące dane. • Powielenie: Klonowanie danych w obrębie bieżącego przypadku. • Eksport: Zapisz dane na lokalnym komputerze PC. • Usuń: Usunięcie bieżących danych lub grupy danych.
------------------	---

Kontrola modelu 3D

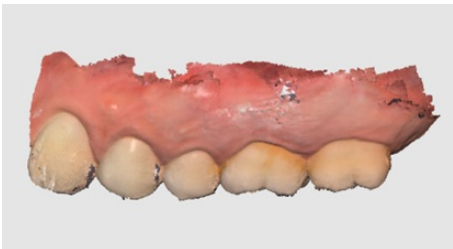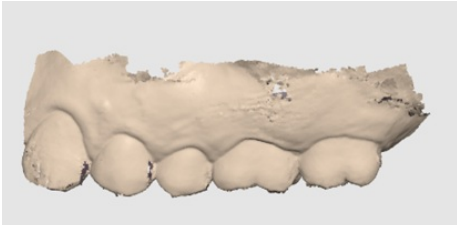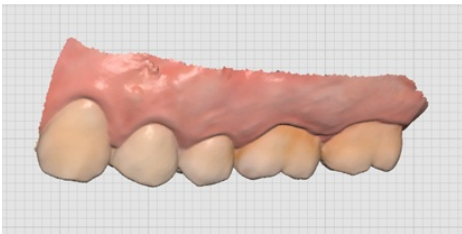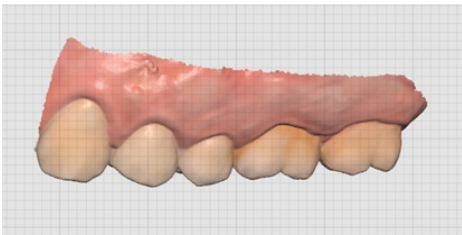	Przesuń	Przenosi model.	
	Obróć	Obraca model.	
	Przybliż/Oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.	
	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.	
	Tryb wyświetlania modelu	Tekstura włączona	Pokaż dane w rzeczywistych kolorach tekstury. 
		Tekstura wyłączona	Pokaż dane w jednym kolorze. 
	Ustawienia siatki (mm)	Siatka włączona	Pokaż siatkę w tle. 
		Nakładka włączona	Nakładanie siatki na model. 
		Siatka wyłączona	Ukryj siatkę.

Partnerzy

Możesz wyszukać potencjalnych partnerów, aby złożyć wniosek o partnerstwo oraz wyświetlić listę obecnych partnerów i partnerów z umowami.


iNota

Usługi z wykorzystaniem Google Maps nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

Wyszukiwanie partnerów

Możesz wyszukać użytkowników Medit Link na podstawie nazwy firmy i/lub adresu.

W wynikach wyszukiwania możesz wysłać wniosek o partnerstwo do organizacji, z którą chcesz współpracować.

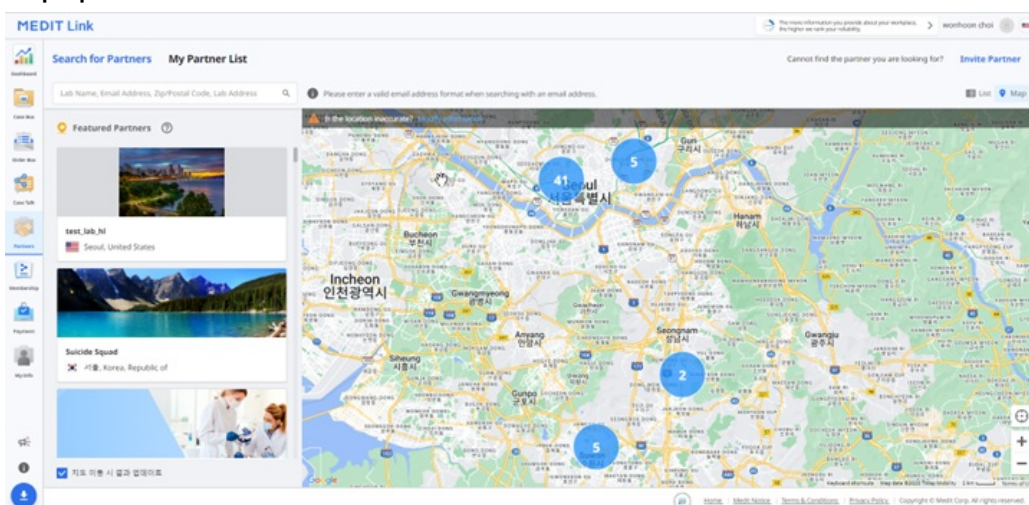


Moja lista partnerów

Możesz przejrzeć swoje aktualne partnerstwa i umowy ze wszystkimi istniejącymi firmami partnerskimi w zakładce Moja lista partnerów.

Czym różni się umowa od partnerstwa?

Po nawiązaniu współpracy z firmą, możesz poprosić o zawarcie umowy z tą organizacją.

- Jeśli partner zaakceptuje Twój wniosek o zawarcie umowy, możesz przystąpić do płatności za złożone zamówienia.

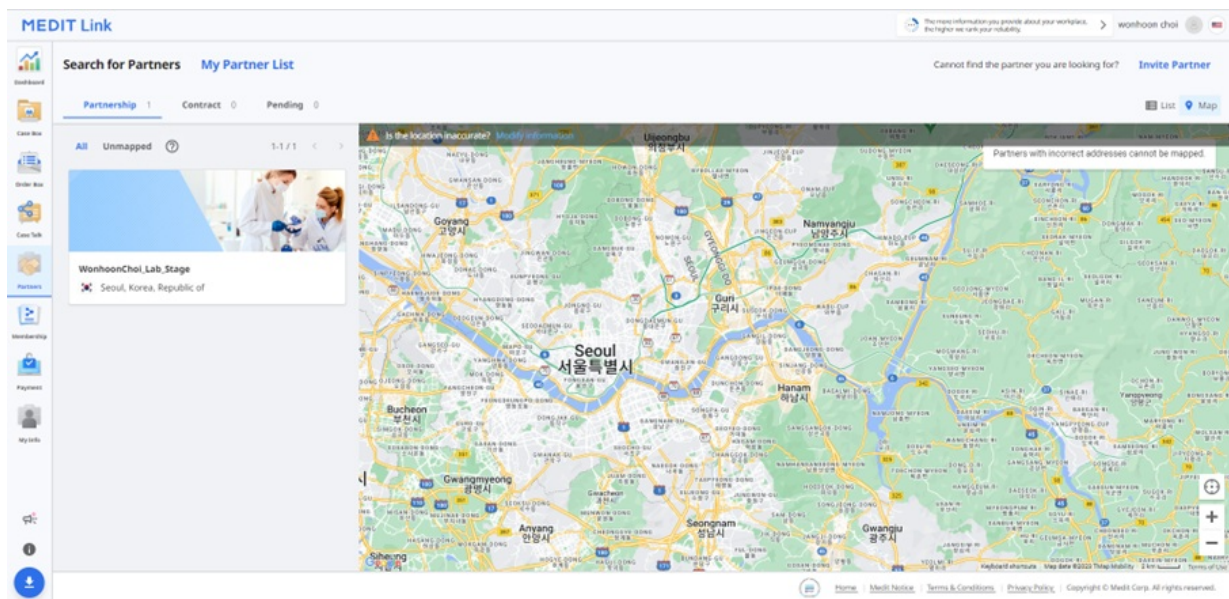

iNota

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Umowa

Zaproszenie od partnera

Jeśli masz organizację, z którą chcesz współpracować, możesz zaprosić ją do Medit Link. Partnerstwo zostanie automatycznie zawiązane po przyjęciu przez nich zaproszenia.

1. Kliknij "Zaproś partnera" w lewym górnym rogu ekranu.
2. Wpisz adres e-mail sprzedawcy, z którym chcesz współpracować i wyślij mu zaproszenie z prośbą o współpracę.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. Po zaakceptowaniu przez zaproszoną organizację zaproszenia i zapisaniu się do Medit Link, partnerstwo zostanie automatycznie nawiązane.

Członkostwo

Polityka członkostwa Medit Link ma na celu stworzenie bardziej rozbudowanego środowiska cyfrowego, stopniowo rozszerzając się, aby zapewnić różne usługi oparte na platformie chmury.

Chcemy zapewnić naszym klientom bardziej spójne i spersonalizowane doświadczenie dzięki naszej nowej polityce członkostwa.

Dostępne są dwa plany członkostwa:

Standardowy

- Bezpłatny plan standardowy dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników
- 1 GB pamięci w chmurze
- Dla nowych użytkowników

Premium


- Plan płatny
- 10 TB pamięci w chmurze
- Dla użytkowników z wieloma przypadkami i różnymi danymi
- Miesiąc bezpłatnego okresu próbnego

	Standardowy	Premium
Przechowywanie w chmurze	1 GB	10 TB
Opłata miesięczna	Bez opłat	0,99\$/miesiąc
* Pamięć w chmurze nie oblicza miejsca zajmowanego przez Dane nieprzetworzone.		

iNota

Plany członkowskie będą dostępne na Medit Link w Chinach. Możesz uzyskać plan Premium za darmo do czasu oficjalnego wydania funkcji.

Członkostwo

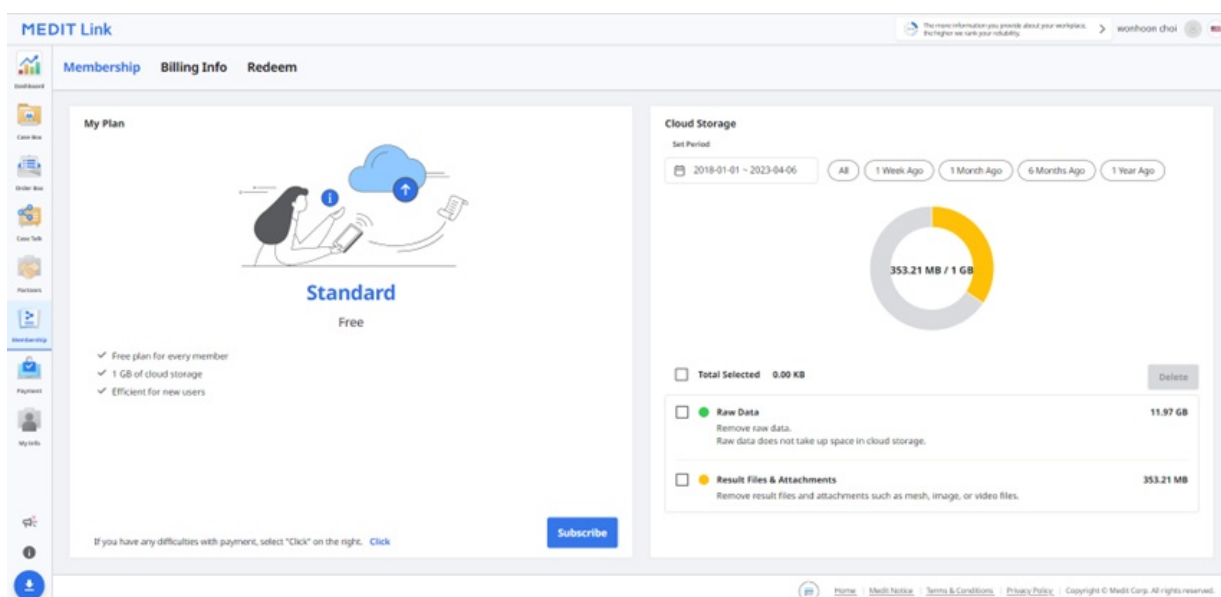

The screenshot displays the Medit Link membership interface. On the left, a sidebar lists navigation options: Dashboard, Case Mix, Order Mix, Case Talk, Partners, Membership (selected), Payment, and My Info. The main content area is divided into two panels. The 'My Plan' panel on the left shows the 'Standard Free' plan with an illustration of a person using a device. Below the plan name, it lists benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is at the bottom right of this panel. The 'Cloud Storage' panel on the right shows a donut chart indicating 353.21 MB / 1 GB used. Below the chart, there is a table of storage usage:

Category	Usage
Raw Data	11.97 GB
Result Files & Attachments	353.21 MB

The 'Raw Data' row is highlighted with a green dot, and the 'Result Files & Attachments' row is highlighted with a yellow dot. The table also includes checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB) and 'Delete' buttons. At the bottom of the page, there is a footer with links: Home, Medit Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Mój plan

W sekcji po lewej stronie możesz zobaczyć, jaki plan członkowski aktualnie posiadasz. Tutaj możesz również w każdej chwili zmienić status swojej subskrypcji członkostwa.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)


Przechowywanie w chmurze

W sekcji po prawej stronie możesz zarządzać swoją przestrzenią do przechowywania w chmurze.

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)

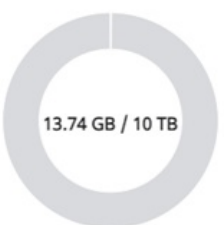

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ ● Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ ● Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	


Ustaw okres	Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w tym przedziale czasowym. • Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki. • 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia. • 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia. • 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia. • 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.
Dane nieprzetworzone	Dane nieprzetworzone nie zajmują miejsca przy przechowywaniu w chmurze, więc nie będzie ich na wykresie pi-chart. Ale możesz zarządzać danymi nieprzetworzonymi z tego miejsca w razie potrzeby, np. Usunąć je, aby chronić prywatne informacje pacjenta itp.
Wynik & Załącznik	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Usuń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce.

Subskrybuj

Jeśli jesteś obecnie w planie Standard lub planie Premium z kodem realizacji, możesz zapisać się na członkostwo Premium.

Płatność jest realizowana za pośrednictwem usługi Stripe (www.stripe.com).

1. Kliknij przycisk "Subskrybuj".

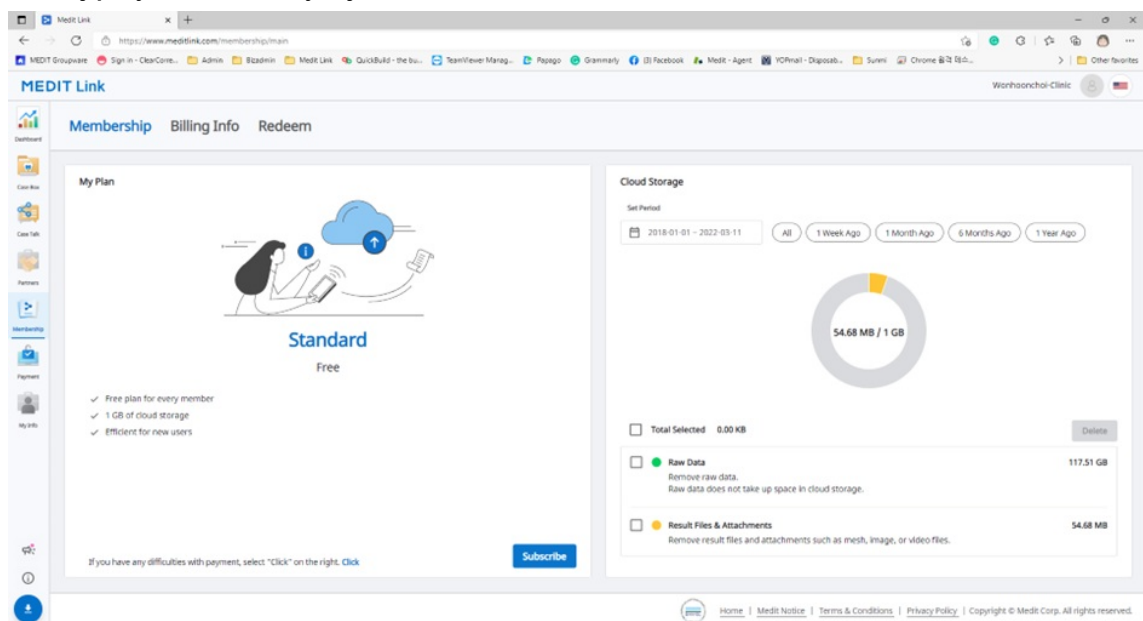

2. Sprawdź opis planu Premium i ponownie kliknij "Subskrybuj".

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Sprawdź cenę i warunki oraz wprowadź informacje niezbędne do dokonania płatności. Następnie kliknij "Subskrybuj".

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. Płatność może zająć kilka sekund. Po zakończeniu zobaczysz wiadomość z potwierdzeniem.

Subscribe Membership



Payment Successful.

[Invoice](#)

[Close](#)

Anuluj subskrypcję


W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa. Po anulowaniu subskrypcji, możesz nadal korzystać z członkostwa Premium przez pozostałe dni tego opłaconego miesiąca. Twój plan zostanie zmieniony na Standard od następnego dnia płatności, a przestrzeń dyskowa w chmurze zostanie ograniczona do 1 GB. Jeśli pojemność magazynu w chmurze zostanie przekroczona, pliki nie będą tworzone w kopii zapasowej, a funkcje zamawiania i udostępniania nie będą dostępne.

1. Kliknij "Anuluj subskrypcję".

The screenshot shows the MEDIT Link web application. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The left sidebar contains various icons for navigation. The main content area is titled 'My Plan' and features an illustration of a person using a smartphone. Below the illustration, the 'Premium' plan is listed with a price of '0.99\$ USD / Monthly'. A list of benefits is shown: 'A subscription plan', '10TB cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial after subscription'. At the bottom of the plan section, it states 'The next scheduled payment date is 2021-09-10. View More'. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The right sidebar is titled 'Cloud Storage' and shows a 'Set Period' dropdown set to '2018-01-01 - 2021-09-09'. Below this, a circular progress indicator shows '0.00 KB / 10 TB'. A table lists storage categories: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Scan Files' (0.00 KB), and 'Result & Attachment' (0.00 KB). The footer contains links for 'Home', 'Medit Notice', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and a copyright notice for Medit Corp.

2. Kliknij "Anuluj subskrypcję".

Cancel Subscription

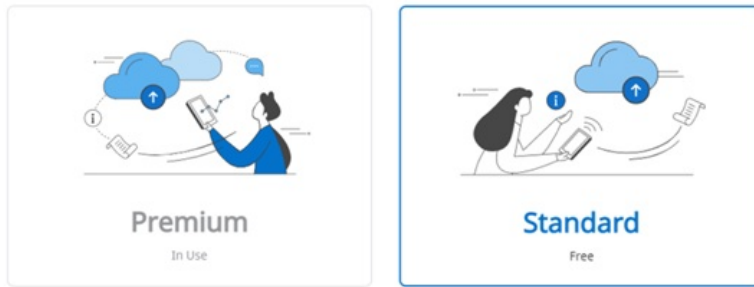

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

Cancel Subscription

Stay Subscribed

3. Aby potwierdzić, że chcesz anulować subskrypcję, kliknij ponownie "Anuluj subskrypcję" w nowym oknie wyskakującym.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Twoja subskrypcja została anulowana.
5. Twój plan zostanie zmieniony na Standard od następnego dnia płatności, a przestrzeń dyskowa w chmurze zostanie ograniczona do 1 GB. Jeśli pojemność magazynu w chmurze zostanie przekroczona, pliki nie będą tworzone w kopii zapasowej, a funkcje zamawiania i udostępniania nie będą dostępne.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Informacje o rozliczeniach

Możesz sprawdzić historię płatności za subskrypcje członkowskie, w tym fakturę za każdą płatność. Możesz również dodać lub zmienić metodę płatności, która będzie stosowana począwszy od następczej zaplanowanej płatności.

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Jak dodać metodę płatności

1. Kliknij "Edytuj metodę płatności".

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Kliknij "Dodaj metodę płatności".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

 **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Wprowadź wymagane informacje i kliknij "Dodaj".

Add payment method

Card information

 Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Nowo dodany sposób płatności zostanie ustawiony jako domyślny i użyty przy następnej płatności.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Jak zmienić metodę płatności

1. Kliknij ikonę rozwiniętego menu obok metody płatności, którą chcesz zmienić w oknie dialogowym rozliczeń.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Kliknij "Ustaw jako domyślną", aby ustawić wybraną kartę jako domyślną metodę płatności.

The screenshot shows a 'Billing' page with three main sections: 'CURRENT PLANS', 'PAYMENT METHODS', and 'BILLING INFORMATION'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards: one ending in 5556 marked as 'Default' and another ending in 4242. Both cards expire in 11/2021. A red box highlights the 'Make default' and 'Delete' options for the second card. There is also a '+ Add payment method' link and a close button (X) for the first card.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Zrealizuj

Zarejestruj kod wykupu podany w ramach promocji. Możesz użyć członkostwa Premium razem z kodem wykupu.

Zarejestruj Kod Realizacji

1. Wprowadź kod realizacji i kliknij "Zarejestruj".

2. Przeczytaj zawiadomienie i wybierz "Zarejestruj" lub "Zastosuj" w wyskakującym oknie dialogowym.
 - **Zarejestruj:** Zarejestruj kod realizacji. Możesz aktywować i wykorzystać kod realizacji później po rejestracji.
 - **Zastosuj:** Zarejestruj i aktywuj kod realizacji. Rabat promocyjny obowiązuje natychmiast.

Aktywuj Kod realizacji

Możesz zarejestrować wiele kodów realizacji, ale musisz aktywować ten, który chcesz wykorzystać.

1. Kliknij przycisk "Aktywuj" obok kodu, który chcesz wykorzystać.
Jeśli nie ma kodu o statusie "Aktywny", wybrany przez Ciebie zostanie zastosowany natychmiast. Jeśli jakiś kod jest już aktywowany, jego status zmieni się na "Oczekiwanie", a zamiast niego zostanie użyty ten, który wybrałeś. Kiedy aktualny kod realizacji wygaśnie, oczekujący kod zostanie automatycznie ponownie aktywowany.
2. **iNota**
Tylko jeden kod może być w statusie "Oczekiwanie".

Medit Link

[MEDIT Groupware](#)
[Sign in - ClearCorre...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome](#)
[로그인](#)
[로그아웃](#)

MEDIT Link

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Płatność

iNota


Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link w Chinach.

- Płatność

Szczegóły płatności (Konta klinik & Laboratoriów)

Możesz sprawdzić historię płatności i transakcji pomiędzy Tobą a Twoimi partnerami poprzez stronę Szczegóły płatności.

Informacje o koncie płatniczym (tylko konto Laboratorium)

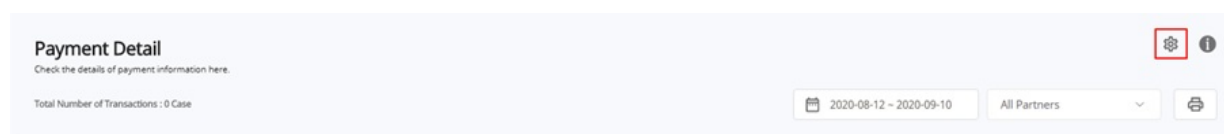

Ta funkcja jest dostępna tylko dla konta administratora laboratorium, aby umożliwić mu wprowadzenie informacji w celu uzyskania płatności od partnerów.

- Musisz wprowadzić informacje o koncie płatniczym dla swoich partnerów, aby móc składać zamówienia poprzez system płatności online.

iNota

Jeśli wybierzesz kraj, w którym obsługiwany jest Stripe, zostaniesz przekierowany do Stripe, klikając przycisk, aby zarejestrować się w Stripe.

Możesz wybrać Koreę Południową, a następnie możesz wprowadzić lokalny numer konta bankowego, aby otrzymać płatność, a KCP przetworzy Twoją płatność.

Moje informacje

Moje konto

Tutaj możesz przejrzeć i edytować informacje podane podczas rejestracji oraz sprawdzić swój status członkowski.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

2. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Moja organizacja (tylko konto administratora)

Tutaj możesz przeglądać i edytować informacje o swojej organizacji. Ta sekcja jest dostępna tylko dla kont typu administrator.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

☒ Address Information

☒ Organization Information

☐ Additional Information

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.
1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of ▼

State/Province *
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Mój skaner

Możesz sprawdzić informacje o podłączonym urządzeniu dla danego konta.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Mój cennik (tylko administrator konta laboratorium)

Możesz wprowadzić produkty oferowane przez Twoje laboratorium oraz informacje o cenie dla każdego produktu.

My Account My Organization **My Price List** ⓘ

Teeth Arch AED (₩) ▼

✓ All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (0/7) Diagnostic Wax-Up (0/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)

☐	Name	Type	Method	Material	Price
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	₩6.03
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

!Nota

- Po zawarciu umowy z partnerem, partner może zamówić Twoje produkty na podstawie tej listy produktów i ceny.
- Jeśli masz tylko partnerstwo ze swoim partnerem, Medit Link nie obsługuje zleceń wymagających informacji o cenie.

Pozostałe menu

Powiadomienie & Aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informacje Medit

Możesz uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Uzyskaj dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Medit Academy, Medit Academy YouTube i Medit Help Center.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Pobierz Medit Link App

Możesz pobrać z sieci najnowszą wersję instalatora programu. To menu jest pomocne w przypadku utraty instalatora dostarczonego w pakiecie z produktem lub posiadania nieaktualnego instalatora.


50

iNota

Medit Link aktualizuje się automatycznie, gdy masz połączenie z internetem.

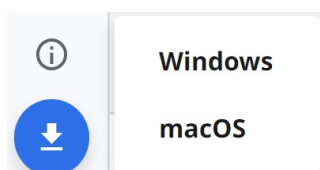

Omówienie

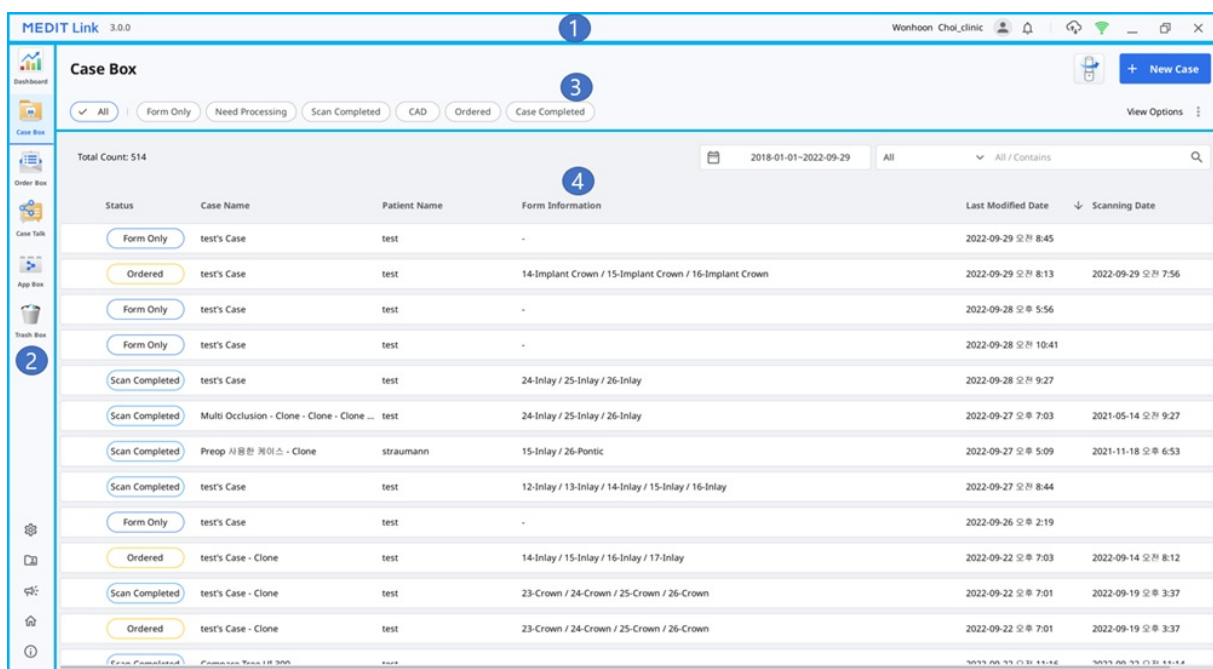

1	Pasek tytułowy	Odnies się do Medit Link App > Pasek tytułowy , aby uzyskać szczegółowe informacje.
2	Menu	Odnies się do Medit Link App > Menu , aby uzyskać szczegółowe informacje.
3	Narzędzia i funkcje	Odnies się do Medit Link App > Przeglądarka plików i Medit Link App > Przeglądaj opcje , aby uzyskać szczegółowe informacje.
4	Lista przypadków	Aby uzyskać szczegółowe informacje, odnieś się do Medit Link App > Filtrowanie i wyszukiwanie .

Omówienie pola

	Przeływ pracy	Konto kliniki	Konto laboratorium
Krok 1	Stwórz przypadki	Case Box: Twórz przypadki i łatwo wyszukuj oraz przeglądaj je za pomocą różnych opcji filtrowania i wyszukiwania. Dzięki stworzonemu przypadkowi możesz bezpośrednio połączyć się z programami skanującymi i programami CAD, aby na nich pracować.	


Krok 2	Zamawianie/Zarządzanie przypadkami	Order Box: Zarządzaj zamówionymi przypadkami. Zapewnione są funkcje zarządzania procesem od zamówienia do zakończenia przypadków.	In Box: Zarządzaj przypadkami z otrzymanych zamówień. Zapewnione są funkcje zarządzania procesem przyjmowania, odrzucania, wysyłania i zakończenia przypadków.
Krok 3	Praca nad Skanowaniem/CAD		Work Box: Zarządzaj przypadkami, które zostały przekazane z In Box lub które sam stworzyłeś. Możesz bezpośrednio połączyć się z programami skanującymi i programami CAD, aby na nich pracować.
Krok 4	Udostępnij przypadki	Case Talk: Udostępniaj stworzone przypadki z ograniczeniami, bez ograniczeń, konkretnym osobom lub innym zarejestrowanym członkom Medit Link.	
Krok 5	Praca dodatkowa lub uzupełniająca	App Box: Korzystaj z różnych aplikacji, które uzupełniają Twój cyfrowy przepływ pracy dentystycznej. Możesz pobrać i zainstalować aplikację Medit lub aplikacje innych firm.	
Krok 6	Usuń/Przywróć przypadki	Trash Box: Wyświetlaj, przywracaj lub trwale usuwaj przypadki z Trash Box.	

Poniższa tabela podsumowuje, jakie Pola są dostępne w poszczególnych typach kont kliniki i laboratorium.

Typ konta		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Konta kliniki	Administrator	O	O	X	X	O	O	O
	Członek	O	X	X	X	O	O * Tylko funkcja przywracania	O
Konta laboratorium	Administrator	X	X	O	O	O	O	O
	Członek	X	X	X	O	O	O * Tylko funkcja przywracania	O

Pasek tytułowy

Pasek tytułowy zapewnia szybki dostęp do takich funkcji jak stan sieci, synchronizacja w chmurze i powiadomienia.

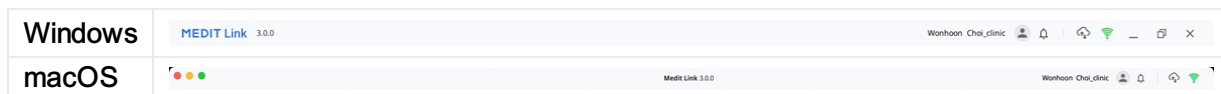

Moje informacje

Moje informacje zawierają podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak zdjęcie profilowe, nazwa organizacji, adres e-mail i nazwa użytkownika.

Zapewnia również opcję wylogowania i skrót do strony Moje konto w Medit Link Web.

1	Pokaż zdjęcie profilowe.
2	Pokaż nazwę organizacji, adres e-mail i nazwę użytkownika.
3	Wyloguj się z aktualnego konta.
4	Przejdź do Medit Link Web będąc zalogowanym na aktualnym koncie. Możesz przeglądać, edytować i zarządzać informacjami o koncie, które wprowadziłeś podczas rejestracji.

Powiadomienia

Możesz zobaczyć powiadomienia związane z umowami, zamówieniami i procesami pracy.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Zaznacz pole, aby pokazywać tylko nieprzeczytane wiadomości. |
| 2 | Kliknij dowolne powiadomienie, aby natychmiast przejść do powiązanego przypadku lub strony internetowej. |

Administrator synchronizacji przypadków

[illegible]

Wszystkie przypadki / Wybrane przypadki	Sprawdź liczbę wszystkich/wybranych przypadków, które należy przesłać.
Prześlij wszystko	Prześlij wszystkie przypadki do chmury.
Anuluj wszystko	Anuluj wszystkie wnioski o przesłanie danych.
	Prześlij przypadek do chmury.
	Anuluj przesyłanie przypadków.
	Spróbuj ponownie przesłać przypadek.

Wszystkie przypadki / Wybrane przypadki	Sprawdź liczbę wszystkich/wybranych przypadków, które należy pobrać.
---	--

Pobierz wszystko	Pobierz wszystkie przypadki na komputer.
Anuluj wszystko	Anuluj wszystkie wnioski o pobranie.
	Pobierz przypadki na komputer.
	Anuluj pobieranie przypadków.
	Ponów próbę pobrania przypadku.

Status sieci

Medit Link umożliwia bezproblemowe korzystanie ze wszystkich funkcji po podłączeniu do sieci.

Aby ułatwić sprawdzanie stanu połączenia sieciowego w czasie rzeczywistym, na pasku tytułu wyświetlana jest ikona stanu sieci.

Jeśli połączenie sieciowe nie jest dobre, mogą wystąpić następujące ograniczenia:

- Niektóre funkcje, takie jak zamawianie przypadku, tworzenie przypadku, udostępnianie za pośrednictwem Case Talk i synchronizacja w chmurze, będą ograniczone.
- Ogólna wydajność usługi może być zmniejszona ze względu na wpływ środowiska sieciowego.

W takim przypadku można wejść w tryb Offline, aby wykonać podstawowe zadania, a następnie skorzystać z funkcji wymagających internetu po uzyskaniu połączenia.

iNota

Symbol sieci wskazuje szybkość reakcji między bieżącym obszarem a AWS (Amazon Web Service). Nie oznacza to prędkości sieci, więc czasami może pokazać status jako słaby lub zły, nawet jeśli prędkość sieci jest wystarczająco duża.


Jeśli inny proces używa tej samej sieci, prędkość może pokazać się jako słaba lub zła, a ogólna wydajność Medit Link może być zła. W takiej sytuacji prosimy nie udostępniać sieci innym procesom.

Na przykład funkcja "Prześlij nieprzetworzone dane" jest ogromną częścią procesu sieciowego. Jeśli symbol pokazuje słaby lub zły stan, przejdź do Ustawienia > Prześlij nieprzetworzone dane i wyłącz "Prześlij automatycznie".

Menu

Dashboard


Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej na Medit Link w zwizualizowanych wykresach i tabelach - zarówno w aplikacji Medit Link App jak i Web.

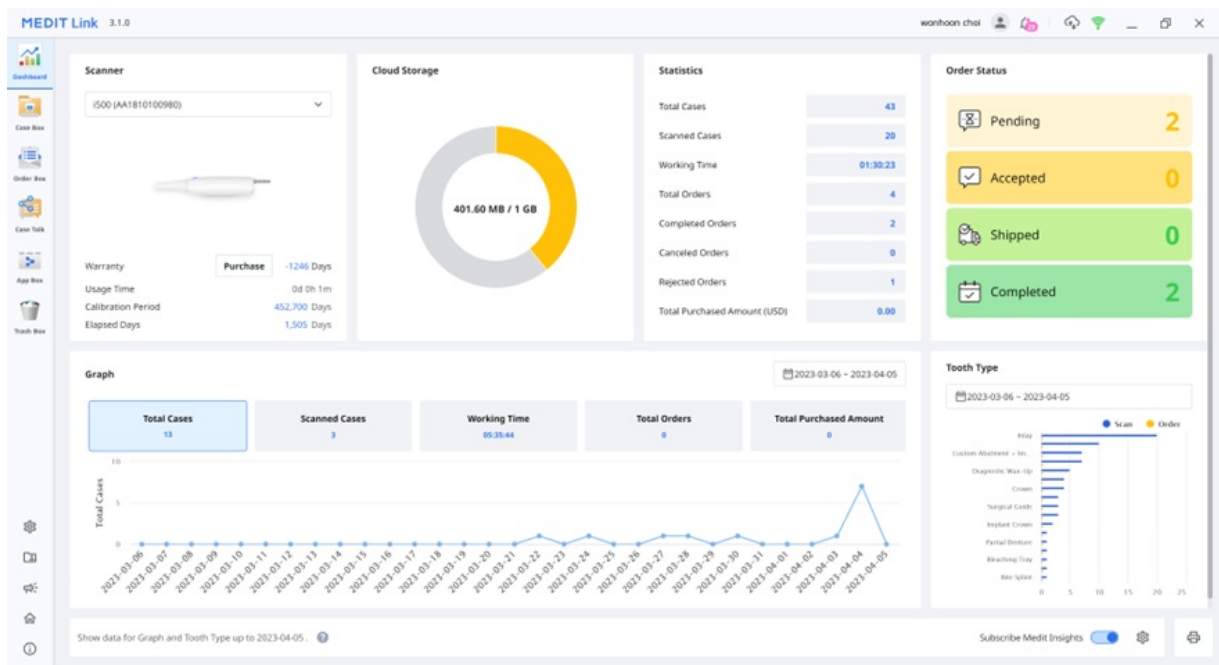

INota

Prosimy odnieść się do [Medit Link Web > Dashboard](#), aby uzyskać więcej informacji na temat dashboard i Medit Insights.

Case Box/Work Box

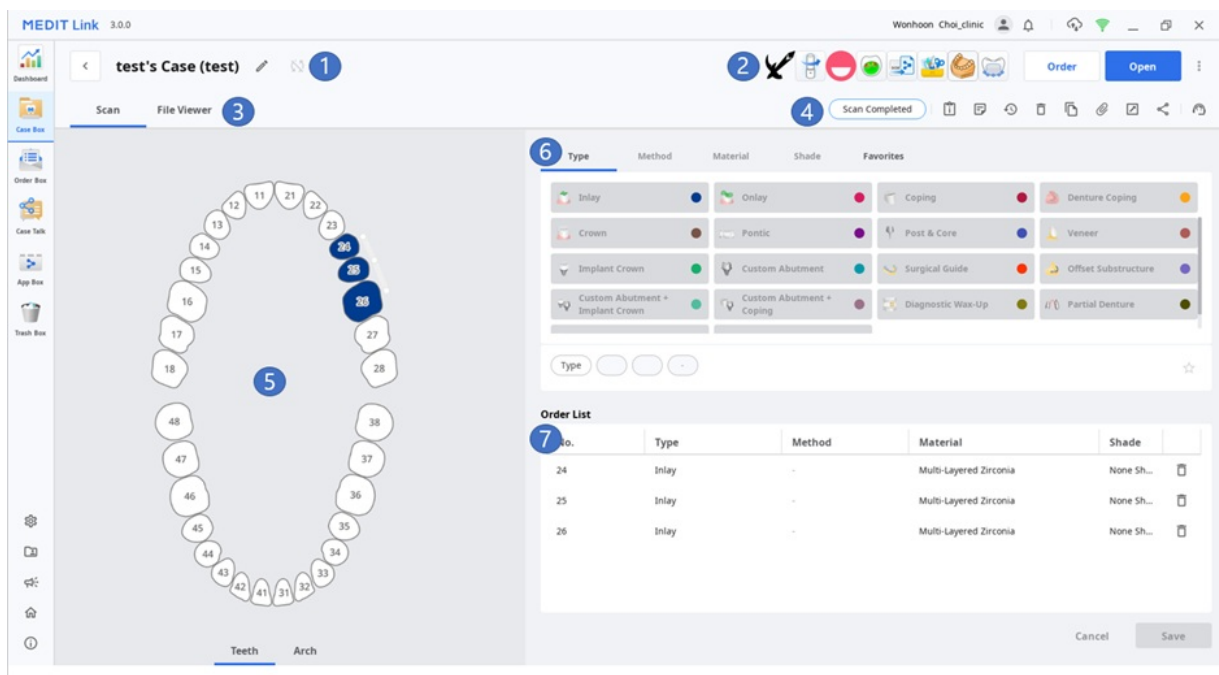

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie kluczowych funkcji: Przyciski Zamów/Skanuj(Otwórz)/Zamów i ikony Apps.
3	Pokaż dostępne zakładki: Formularz, CAD i Przeglądarka plików.
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami:
5	Pokaż formularz rejestracji w interfejsie użytkownika dla wybranego programu CAD.
6	Podaj typ/metodę/materiał/odcień, który użytkownicy mogą wybrać dla wybranego numeru zęba.
7	Pokaż informacje o typie/metodzie/materiale/odcieniu zastosowanym dla wybranych zębów.

Zakładki w Case Box/Work Box

Formularz	CAD	Przeglądarka plików
Zakładka Formularz zapewnia interfejs użytkownika do wprowadzania podstawowych informacji dotyczących skanowania pracy, takich jak typ, metoda, materiał dla numerów zębów i opcje skanowania. Wprowadzone informacje są przekazywane do podłączonego programu skanującego i wykorzystywane jako informacje o zamówieniu podczas składania zamówienia u partnera.	Zakładka CAD zapewnia interfejs użytkownika do ustawiania opcji CAD. Ustawione informacje są przekazywane do podłączonego programu CAD.	Przeglądaj pliki wynikowe generowane przez programy skanujące i CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Funkcje w Case Box/Work Box

Następujące funkcje są dostępne w Case Box/Work Box.

Status przypadku	Pokazuje status przypadku.
------------------	----------------------------

	Przejdź do szczegółów	Zapewnia skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki &Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Historia przypadku	Podaje szczegółowe informacje na temat historii przypadku. History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	Usuń	Usuń przypadek. Nie możesz usunąć zamówionych przypadków lub przypadków, które zostały utworzone w trybie offline.
	Klonuj	Utwórz powtórzenie bieżącego przypadku w Case Box. Wszystkie dane zostaną skopiowane do sklonowanego przypadku. Ta funkcja pomaga powielić informacje o leczeniu tego samego pacjenta lub wykonać dodatkowe zamówienie z tymi samymi informacjami lub plikami.
	Dołącz	Dołącz pliki w różnych formatach.
	Eksportuj	Eksportuj pliki wyników skanowania lub CAD do lokalnego komputera. Możesz wybrać preferowany format pliku podczas eksportu plików. Wyeksportowane pliki mogą być wykorzystane do dalszej pracy w oprogramowaniu CAD i CAM.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Możesz udostępnić link swobodnie każdemu lub tylko określonym osobom. Kod PIN lub data ważności linku mogą być ustawione w celu zabezpieczenia prywatnych informacji.
	Przełącz prośbę opomoc techniczną	Przejdź na stronę Centrum Pomocy Medit, aby wysłać prośbę o pomoc techniczną.

Order Box/In Box

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
3	Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
5	Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
6	Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.

Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak numer zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom wskazanym przez Ciebie, każdemu kto posiada udostępniony link lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez Case Talk w Medit Link App i Medit Link Web.

iNota

Usługa Case Talk wymaga połączenia z internetem.

⚠ Uwaga

Dane usunięte z Trash Box zostaną trwale usunięte z komputera oraz serwera i nie będzie można ich odzyskać.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Ustawienia

Prosimy odnieść się do [Medit Link App > Ustawienia](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat okna Ustawienia.

Zarządzanie pacjentami

Możesz dodawać, edytować, usuwać lub łączyć pacjentów w oknie Zarządzanie pacjentami.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
5-9_JScan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18
5-9_JScan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18
test				2	2020-09-17	2020-09-17
test				22	2019-07-26	2020-09-17
test				1	2020-09-17	2020-09-17
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
grrt				1	2020-09-15	2020-09-15
Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14
test				1	2020-09-13	2020-09-13
test3				2	2020-09-13	2020-09-13
test1				1	2020-09-13	2020-09-13
testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11

Dodaj nowego pacjenta

1. Kliknij "Nowy pacjent".

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Wypełnij wymagane informacje w oknie dialogowym Nowy pacjent, a następnie kliknij "Zapisz".

Usuń pacjenta

iNota

Pacjenta można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma dla niego żadnych przypadków.

1. Wybierz z listy pacjenta, którego chcesz usunąć.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.J Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	salkjaskidf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. Kliknij "Usuń".

Łączenie pacjentów

Możesz połączyć wszystkie przypadki wielu pacjentów w jednego pacjenta.

1. Wybierz z listy pacjentów, których chcesz połączyć.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

Search / Contains

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				8	2020-09-18	2020-09-18	edit
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	edit
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	edit
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	edit
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	edit
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	edit
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	edit
☒	grrr				1	2020-09-15	2020-09-15	edit
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	edit
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	edit
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	edit
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	edit
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	edit
☐	test1231				26	2019-07-25	2020-09-11	edit

2. Kliknij "Połącz pacjentów".
3. Wybierz pacjenta docelowego, z którym chcesz połączyć wszystkie przypadki.
4. Wszystkie przypadki są łączone z pacjentem docelowym, a informacje o pacjencie docelowym są utrzymywane.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

5. Kliknij "Zastosuj", aby kontynuować scalanie.

Powiadomienie & Aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Przejdź do strony Medit Link

Trafisz na stronę Medit Link Web pod konto, na którym jesteś aktualnie zalogowany.

Informacje Medit

Możesz uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Uzyskaj dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Medit Academy, Medit Academy YouTube i Medit Help Center.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



Ustawienia

Ogólne

Udostępnia opcje dotyczące ogólnej konfiguracji systemu.

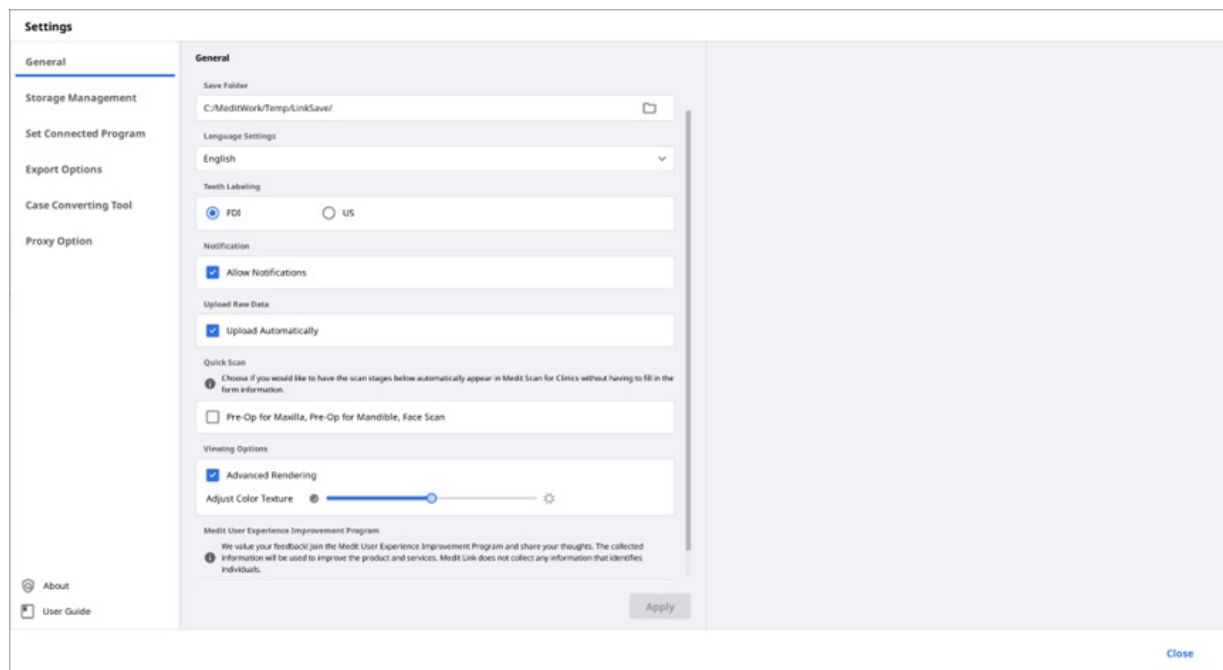


Zapisz folder	Określić folder do przechowywania wyników danych wygenerowanych w Medit Link i podłączonych programach.	
Ustawienia językowe	Wybierz język dla programu.	
Oznakowanie zębów	Wybierz system oznakowania zębów pomiędzy FDA i USA.	
Powiadomienia	Po zaznaczeniu będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach programu.	
Prześlij nieprzetworzone dane	Po zaznaczeniu, dane nieprzetworzone są automatycznie przesyłane do chmury. Pomaga to w tworzeniu kopii zapasowej danych oryginalnych i wykonywaniu bezproblemowego skanowania podczas korzystania z Medit Link z tym samym kontem na innym komputerze. Kopia zapasowa w chmurze danych oryginalnych dotyczy tylko danych pozyskanych w Medit Scan for Clinics.	
Szybkie skanowanie	Wybierz, czy chcesz, aby poniższe fazy skanowania były automatycznie wyświetlane w Medit Scan for Clinics bez konieczności wypełniania informacji w formularzu. • Przed-op dla Szczęki • Przed-op dla Żuchwy • Skan twarzy	
Opcje	Zaawansowane renderowanie	Po zaznaczeniu, model 3D jest wyświetlany w bardziej żywym i realistycznym renderowaniu.

przeglądania	Dostosuj teksturę koloru	Dostosuj jasność modelu 3D. * Wynikowe kolory mogą nieznacznie różnić się od Medit Link w przypadku otwarcia tych samych danych za pomocą innego oprogramowania.
Program poprawy doświadczeń użytkowników Medit	Dołącz do programu poprawy doświadczeń użytkowników Medit. • Zebrane informacje wykorzystujemy do udoskonalania naszych produktów i usług. • Nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.	

Zarządzanie pamięcią masową

Sprawdź i zarządzaj przestrzenią pamięci masowej lokalnej i w chmurze.

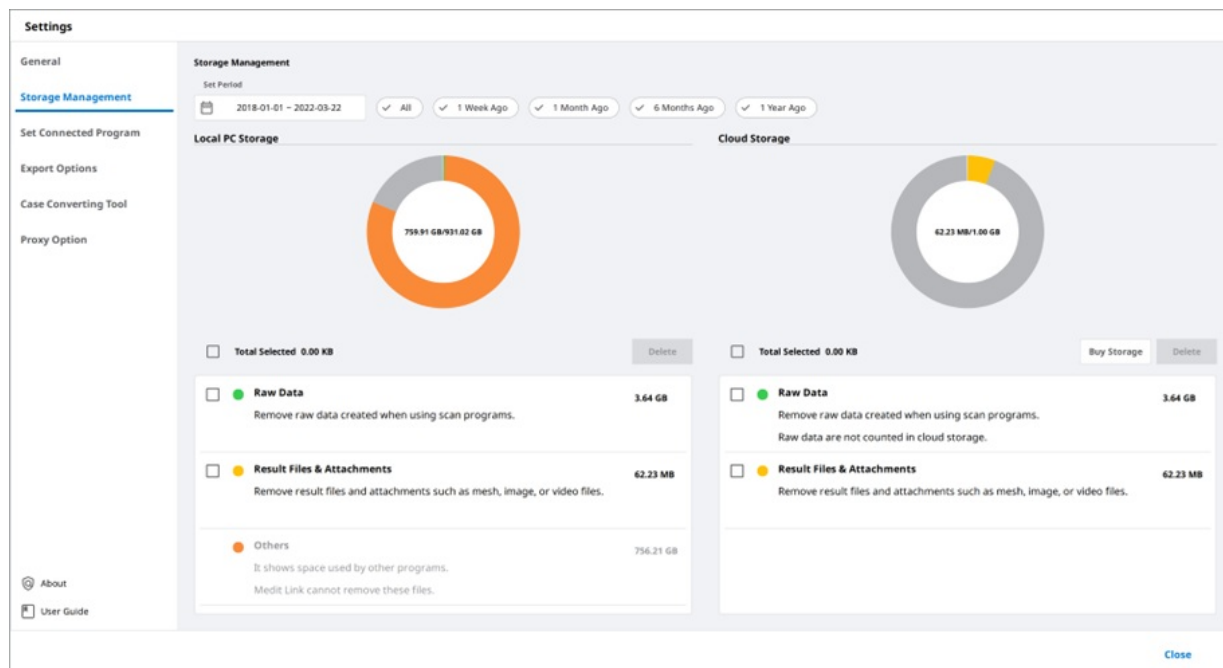

Ustaw okres

Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w poniższych ramach czasowych.

- Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki.
- 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia.
- 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia.
- 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia.
- 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.

Lokalna pamięć masowa

Zarządzaj przestrzenią dyskową komputera.

Dane nieprzetworzone	Usuń wybrane dane nieprzetworzone z komputera. Jeśli dane nieprzetworzone są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i wykorzystać, kiedy tylko chcesz.
----------------------	--

Wynik & Załącznik	Usuń z komputera pliki wyników i załączników, takie jak siatki, obrazy i wideo. Jeśli te pliki są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i użyć, kiedy tylko chcesz.
Inne	Zobacz pliki używane do obsługi systemu i innych programów. Pokazuje pamięć masową komputera. Nie możesz usunąć tych plików z Medit Link.
Usuń	Usuń wybrane pliki z komputera.


Przechowywanie w chmurze

Zarządzaj przestrzenią pamięci masowej w chmurze.

Dane nieprzetworzone	Dane nieprzetworzone nie zajmują miejsca przy przechowywaniu w chmurze, więc nie będzie ich na wykresie pi-chart. Ale możesz zarządzać danymi nieprzetworzonymi z tego miejsca w razie potrzeby, np. Usunąć je, aby chronić prywatne informacje pacjenta itp.
Wynik & Załącznik	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w pamięci masowej w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Zakup pamięci masowej	Jeśli jesteś w planie Standard, subskrybuj plan Premium, aby rozszerzyć pojemność pamięci w chmurze.
Usuń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Ustaw podłączony program

Zarządzaj programami wspierającymi integrację w Medit Link.

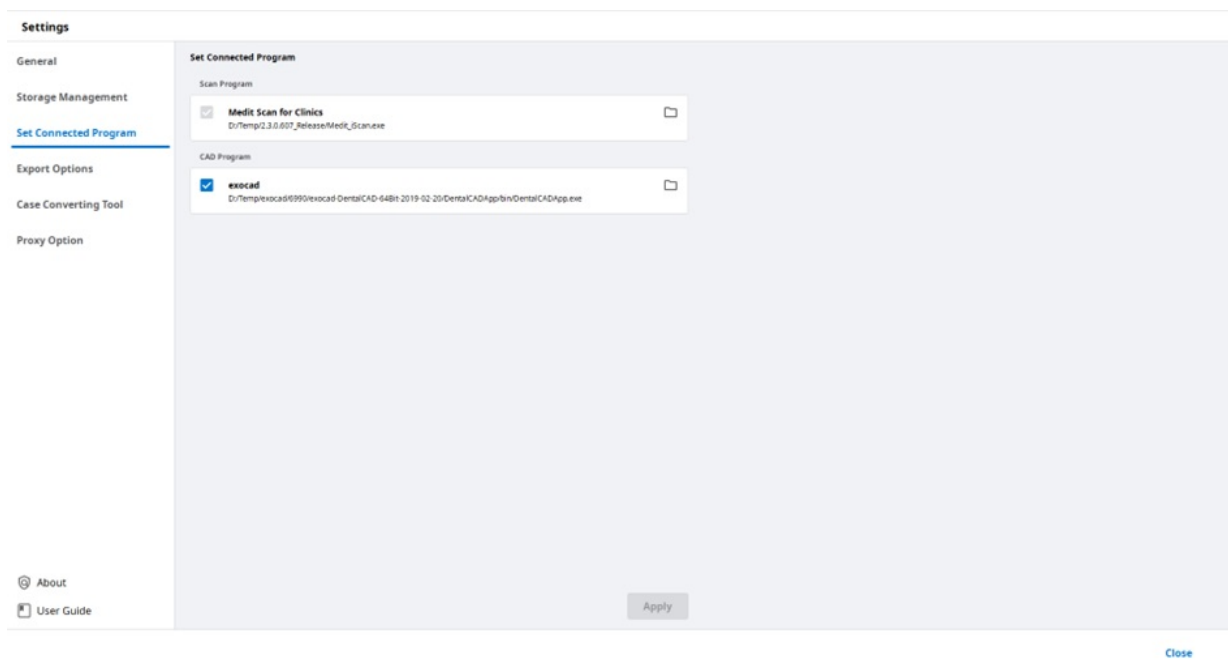

Możesz podłączyć następujące programy:

	Konto kliniki	Konto laboratorium
Program skanujący	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.

Program CAD	exocad	exocad
-------------	--------	--------

iNota

Integracja następujących usług nie jest dostępna dla Medit Link for Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opcje eksportowania

Ustaw sposób eksportowania plików z Medit Link.

Typ CAD	Wybierz program CAD, którego chcesz użyć do projektowania. Program dostosuje wyniki na podstawie Twojego wyboru, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez dodatkowego dopasowania osi.
Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie chcesz przechowywać wyniki.
Format siatki	Określ format końcowego pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja & Połącz	Kompresja plików: Skompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku. Połącz poszczególne siatki: Połącz wszystkie wyniki dla szczęki lub żuchwy w jeden plik. Kiedy używasz niektórych programów, które nie mogą importować i pracować z wieloma plikami, możesz połączyć je w jeden, aby pracować w tych programach.
Opcje, gdy ten sam folder lub plik już istnieje.	Wybierz domyślną akcję dla przypadków, gdy ten sam folder lub nazwa pliku istnieje w ścieżce docelowej. • Zawsze pytaj przy eksportowaniu. • Eksportuj nowy plik i nadpisz istniejące pliki. Aktualnie przechowywany plik zostanie utracony. • Utwórz folder i wyeksportuj pliki

Reguła dotycząca nazwy folderu	Określenie zasad tworzenia nazwy folderu podczas eksportu plików. Ustawione zasady będą stosowane do nazewnictwa folderów, a eksportowany plik będzie zapisywany w utworzonym folderze. Poniższe informacje mogą być wykorzystane do ustawienia reguły. - Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia - Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia
Reguła dotycząca nazwy pliku	Określenie reguł dla nazwy eksportowanego pliku. Następujące informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. - Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia - Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia

Narzędzie do konwersji przypadków

Przenoszenie przypadków pomiędzy różnymi kontami.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오후 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 테스트 케이스	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오후 3:37
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오후 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55


Close

Jak używać narzędzia do konwersji przypadków

1. Otwórz Medit Link i kliknij "Ustawienia".

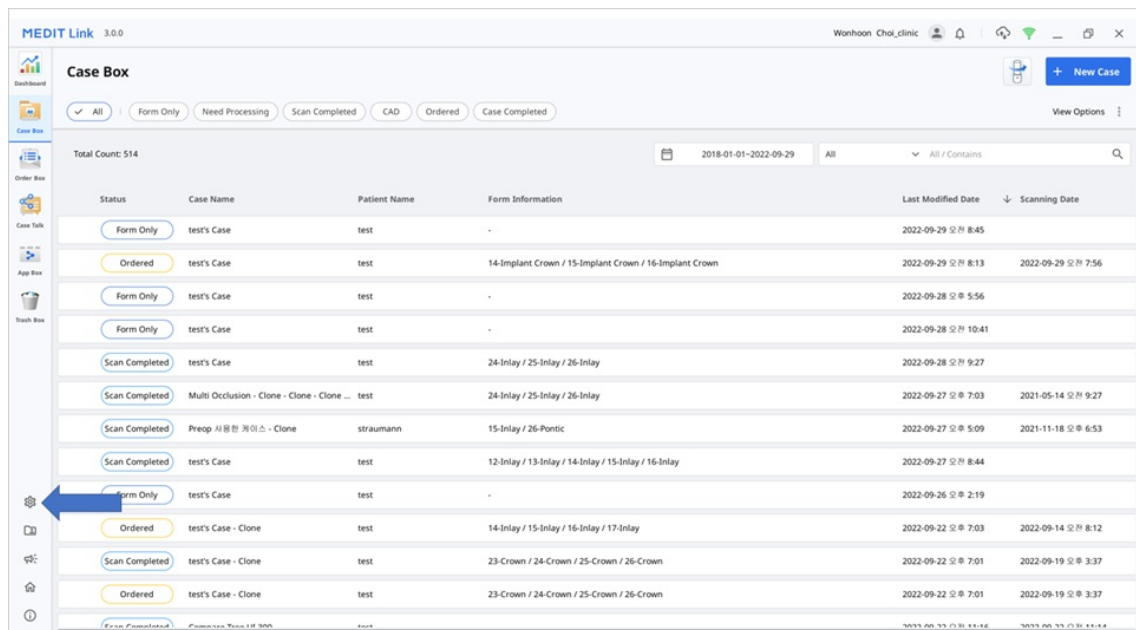


2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

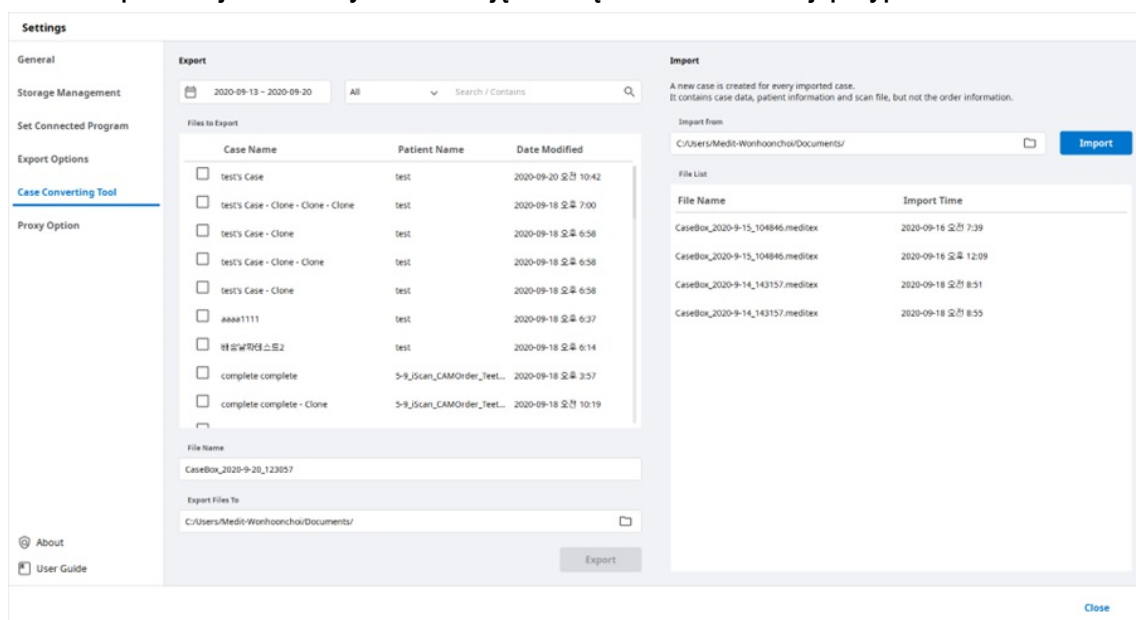

3. W sekcji importu, kliknij ikonę folderu, aby przeglądać swój komputer w poszukiwaniu pliku .meditex, który chcesz zaimportować.


4. Kliknij przycisk "Importuj" i sprawdź importowany plik na liście plików poniżej.

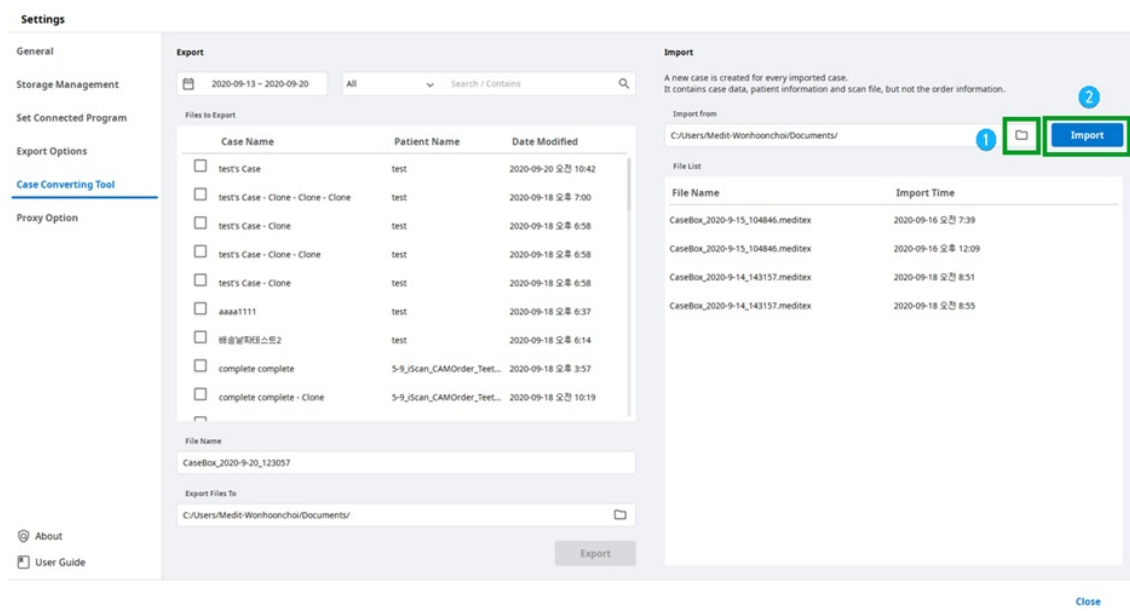

5. Zaimportowany przypadek pojawi się również w Case Box (konto Kliniki) lub Work Box (konto Laboratorium).


Opcje proxy

W niektórych ograniczonych środowiskach sieciowych można zmienić ustawienia sieci.

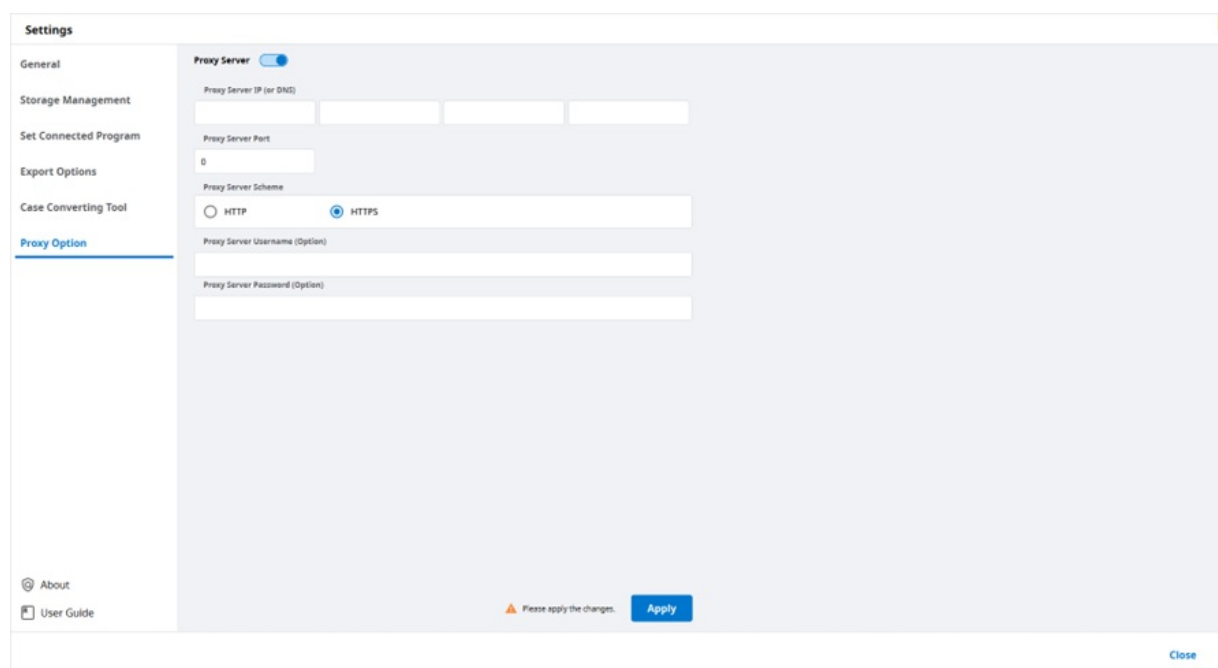

O programie

Pokaż szczegółowe informacje o Medit Link.

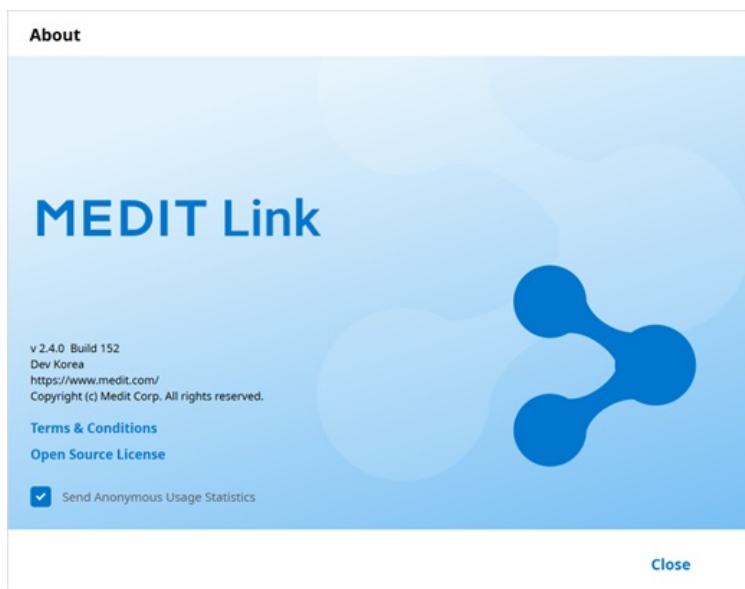

Podręcznik użytkownika

Pobierz przewodnik użytkownika do Medit Link.

Otwarcie podręcznika użytkownika wymaga połączenia z Internetem.

Przeglądarka plików

Przeglądarka plików grupuje i pokazuje różne dane, w tym dane pozyskane z programów połączonych z Medit Link oraz dane dołączone przez użytkowników.



Zapewnia podstawowe funkcje zarządzania, takie jak pokazywanie/ukrywanie danych, dostosowywanie nieprzejrzystości i usuwanie danych.

Obsługuje podglądy plików w następujących formatach:

- Dane 3D: STL, OBJ, PLY
- Obrazy 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Pliki wideo: MKV, MP4, AVI, WMV

Drzewo danych

Możesz grupować i wyświetlać wszystkie dane dla przypadku w drzewie danych. Możesz również pokazać/ukryć dane, dostosować przezroczystość i usunąć dane z drzewa danych.

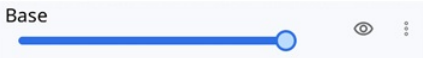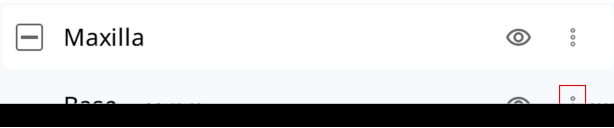	Pokaż/Ukryj	Możesz pokazać lub ukryć dane.
	Nieprzejrzystość	Suwak pojawia się po kliknięciu jednych z danych na drzewie danych. Możesz dostosować nieprzejrzystość wyświetlanych danych, przesuwając suwak. 
	Więcej	Kliknięcie ikony Więcej pokazuje dodatkowe dostępne funkcje.  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane, a wyświetl tylko te odpowiednie. • Ukryj: Ukryj dane. • Powtórzenie: Skopiuj dane i dodaj je do grupy załączników. • Eksportuj: Eksportuj wybrane pliki. • Zmień nazwę: Zmień nazwę danych. • Usuń: Usuń dane.





iNota

Możesz zmienić nazwę danych w trybie online.

Narzędzia kontroli modelu

Kontrola modelu 3D

	Przesuń	Przenosi model.
---	---------	-----------------

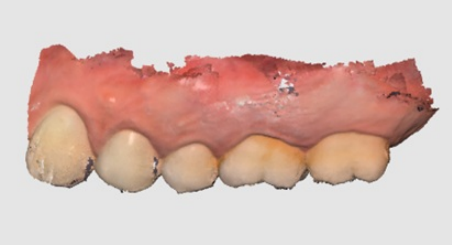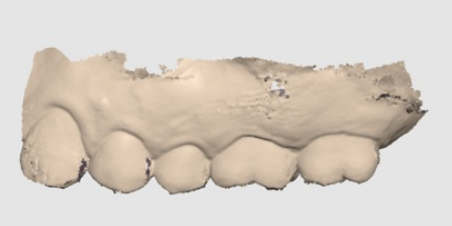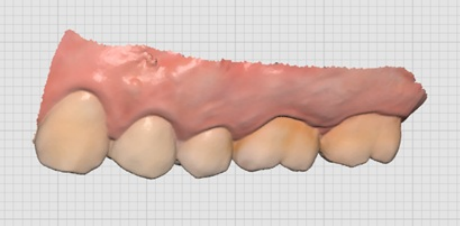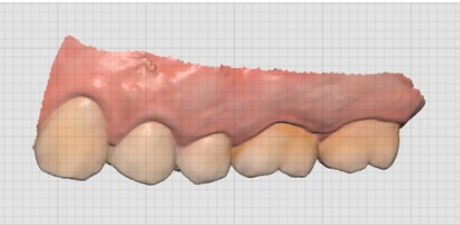	Obróć	Obraca model.
	Przybliż/oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
	Tryb wyświetlania modelu	Tekstura włączona 
		Tekstura wyłączona 
	Ustawienia siatki (mm)	Siatka włączona 
		Nakładka włączona 
		Siatka wyłączona Ukryj siatkę.

Kontrola obrazu 2D


	Następny/Poprzedni obraz	Poruszanie się pomiędzy obrazami.
	Edytuj	Edytuj obraz.
	Kompresuj/Wklej okno	Możesz odłączyć okno obrazu i ustawić je w żądanej pozycji. Można zmienić rozmiar okna. Po przywróceniu okna do pierwotnej lokalizacji wraca ono do domyślnego rozmiaru.

Narzędzia funkcyjne

Przechwytywanie obrazu i Notatka


Przechwyć bieżący ekran jako obraz 2D, narysuj na nim lub dodaj notatki.

Możesz zapisać go jako plik ze swoimi notatkami i wysłać jako referencję.

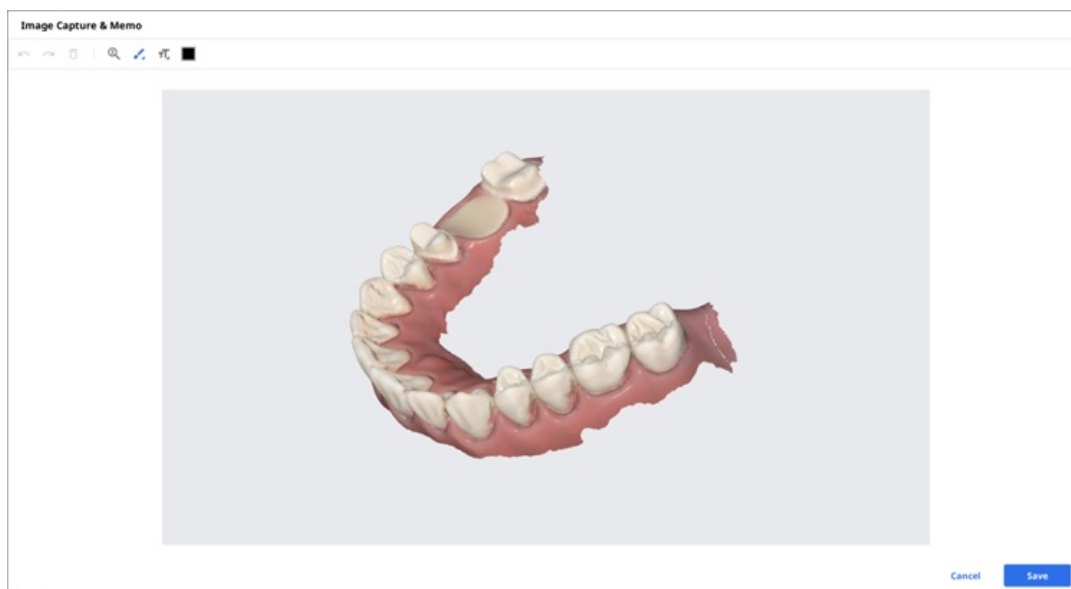

Przechwytywanie obrazów ortodontycznych


Przechwytywanie obrazów w aktualnym kierunku widzenia oraz góra/dół/lewo/prawo od aktualnego kierunku widzenia.

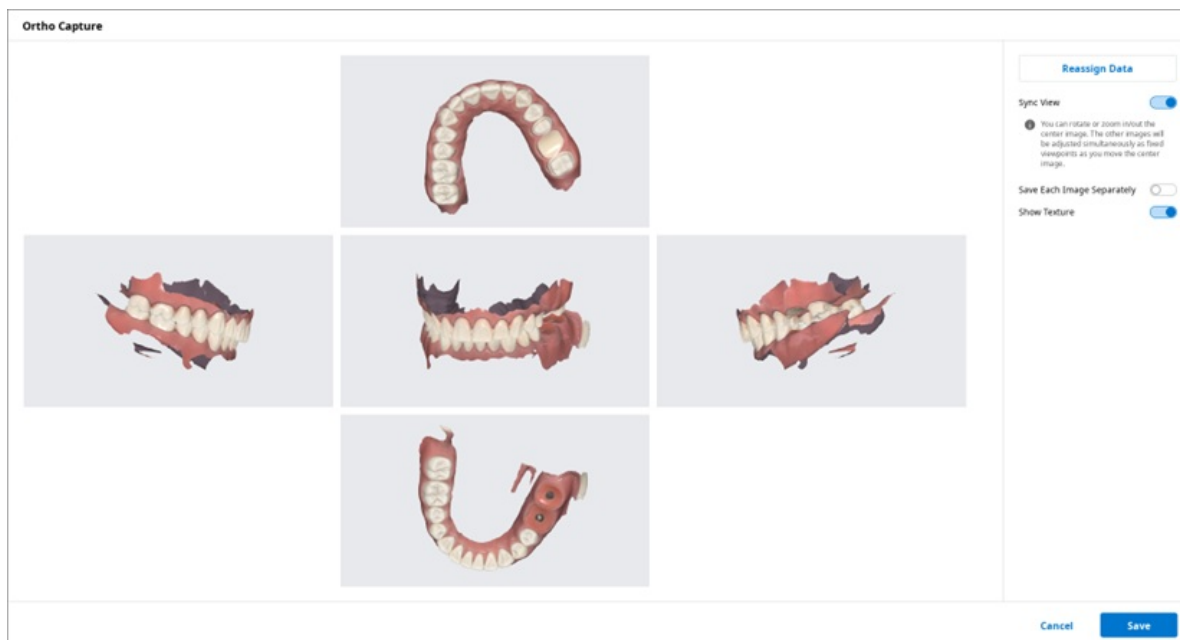

Widok synchronizacji


Gdy jest włączona, możesz obracać lub powiększać/pomniejszać środkowy obraz. Pozostałe obrazy będą regulowane jednocześnie jako stałe punkty widzenia w miarę przesuwania obrazu centralnego.

Po wyłączeniu możesz przesuwać, obracać lub powiększać/pomniejszać wszystkie obrazy indywidualnie.

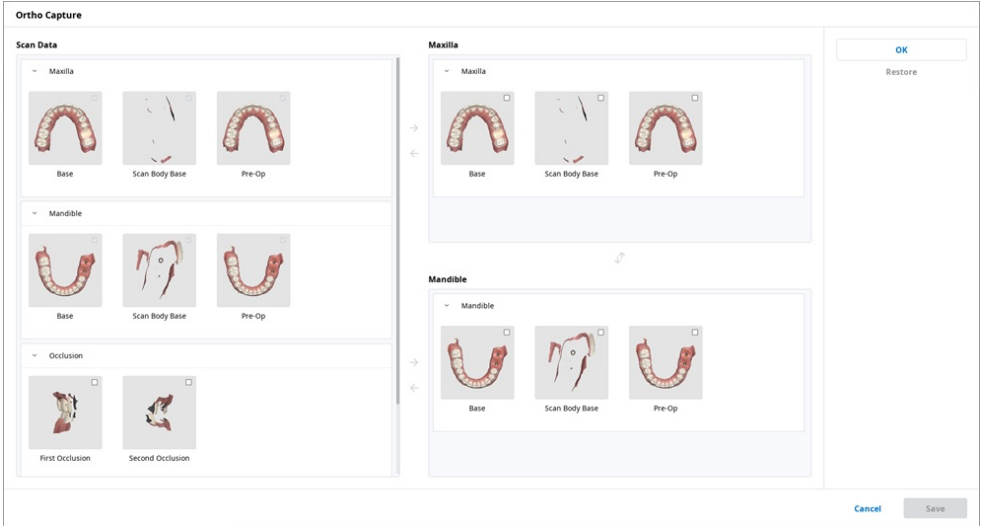Zapisz każdy obraz osobno	Zapisz każdy obraz w wysokiej rozdzielczości.
Pokaż teksturę	Włączenie/wyłączenie tekstury dla modelu.
Ponowne przypisanie danych	Zmień dane dla szczęki/żuchwy za pomocą funkcji Ponowne przypisanie danych. Możesz użyć zmienionych danych do utworzenia i wykorzystania obrazów wynikowych w Przechwytywaniu obrazów ortodontycznych.  • Dane skanowania: Pokazane są wszystkie dane skanowania dla danego przypadku. • Szczeka: Wyświetlane są dane wybrane dla szczęki. • Żuchwa: Wyświetlane są dane wybrane dla żuchwy.


Wypełnij luki

Wypełnij luki w danych siatki 3D.

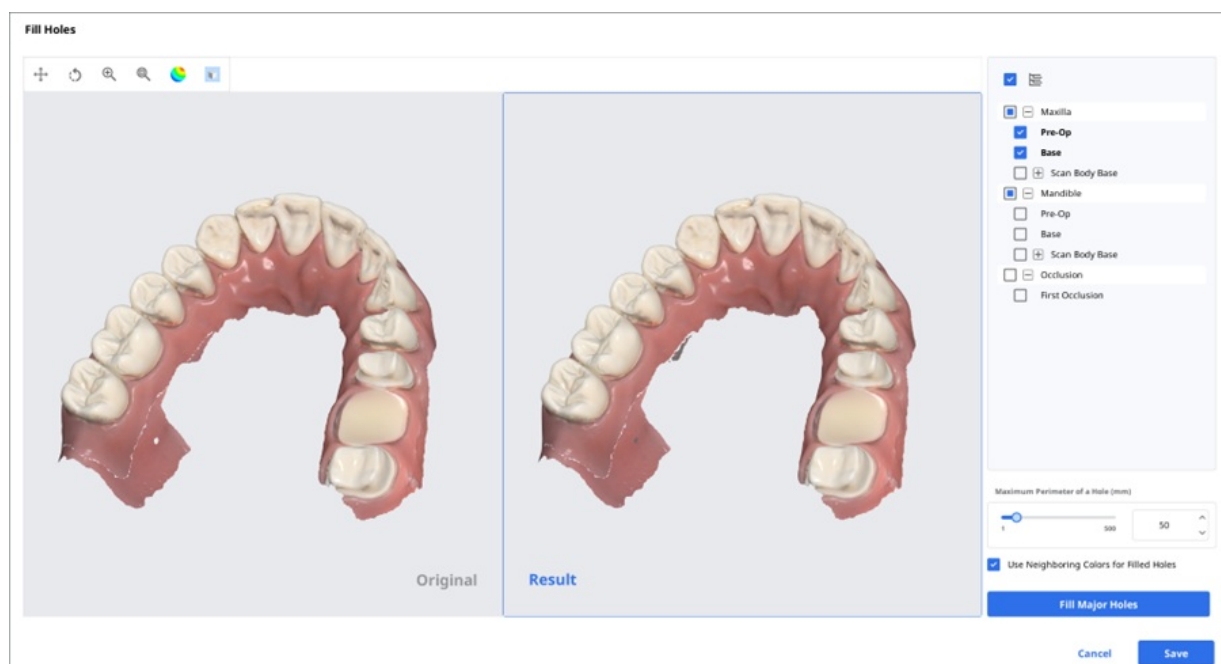

Przycinanie


Przycinanie zapewnia różne narzędzia do edycji danych.

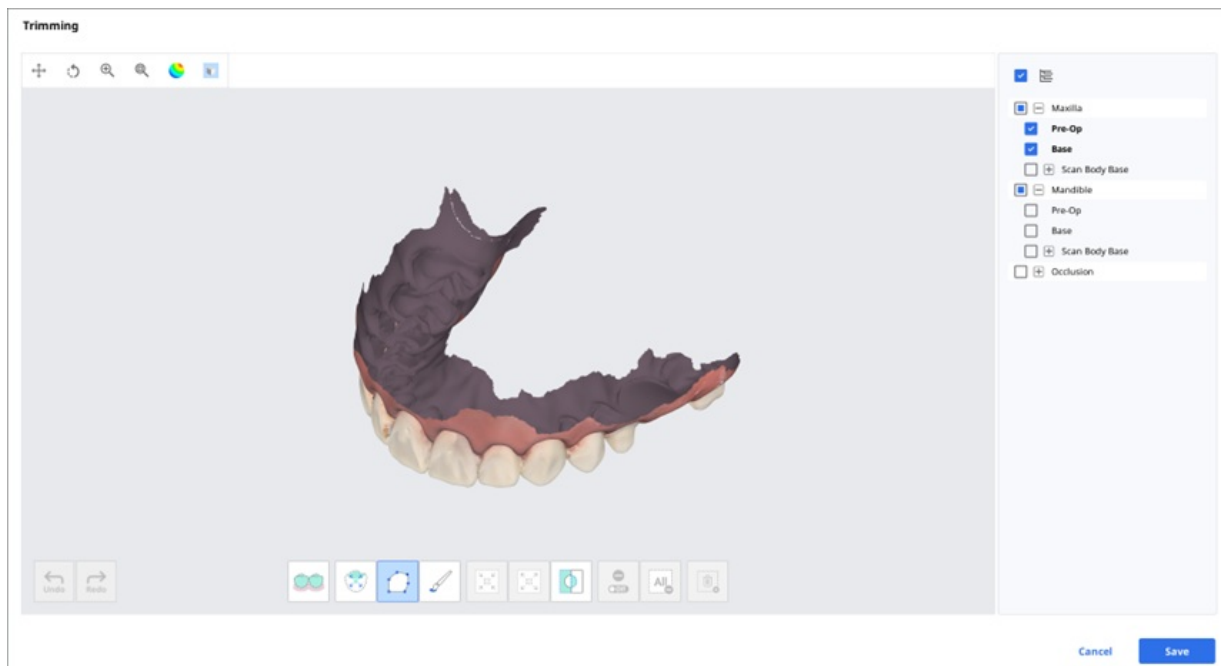

Wybrane dane siatki 3D mogą być edytowane za pomocą różnych narzędzi znajdujących się w dolnej części okna.

Wybór		Inteligentny wybór zębów	Automatycznie wybiera wszystkie zęby łuku, pomijając części dziąsła. iNota Funkcja ta jest dostępna tylko dla danych ze skanowania, które zostały pobrane przez Medit Scan dla Klinik z włączoną opcją "Użyj GPU".
		Inteligentny wybór pojedynczego zęba	Automatycznie wybierz obszar pojedynczego zęba, pomijając części dziąsłowe. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij myszą na ząb.
		Wybór krzywej	Wybiera wszystkie elementy w obrębie krzywej wyrysowanej na ekranie.
		Wybór pędzla	Zaznacz wszystkie elementy na ścieżce narysowanej odręcznie na ekranie. Zostanie wybrana tylko przednia strona. Pędzel jest dostępny w trzech różnych rozmiarach.
Regulacja wybranego obszaru		Skurcz wybrany obszar	Redukuje wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Rozszerz wybrany obszar	Rozszerza wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Odwróć wybrany obszar	Odwraca wybór.
Usunięcie wyboru		Wybór/Odrzucenie wyboru	Gdy jest to włączone, odznacz obszar za pomocą różnych narzędzi.
		Wyczyść wszystkie wybory	Oczyszcza cały wybrany obszar.
		Usuń wybrany obszar	Usuń dane z wybranego obszaru.

1. Zaznacz obszar, który chcesz przyciąć, używając narzędzi do zaznaczania obszaru.

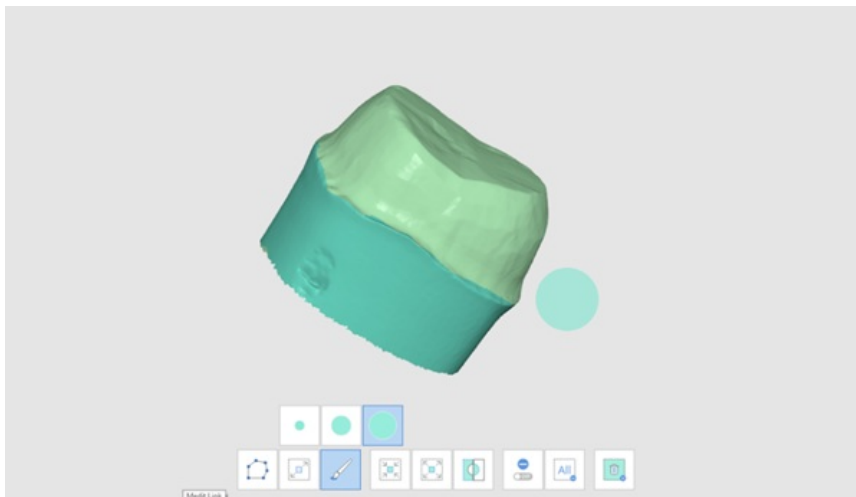


2. iNota


Narzędzie Przycinanie krzywej wybiera wszystkie elementy w obrębie kształtu krzywej narysowanej na ekranie, natomiast narzędzie Przycinanie pędzla wybiera tylko dane powierzchni czołowej.

3. Możesz odwrócić, zmniejszyć lub rozszerzyć zaznaczenie za pomocą następujących trzech narzędzi.


- Odwróć wybrany obszar

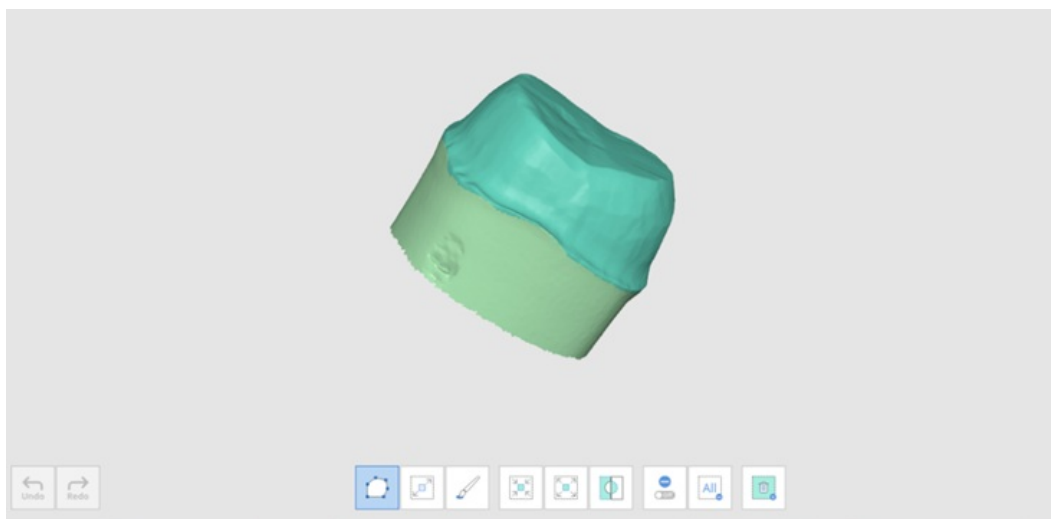

- Skurcz wybrany obszar

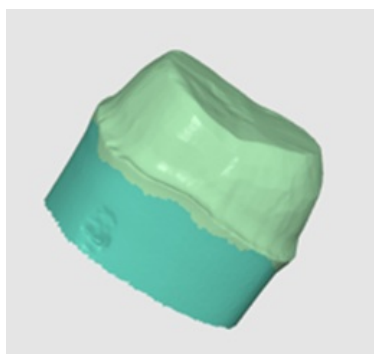


- Rozszerz wybrany obszar

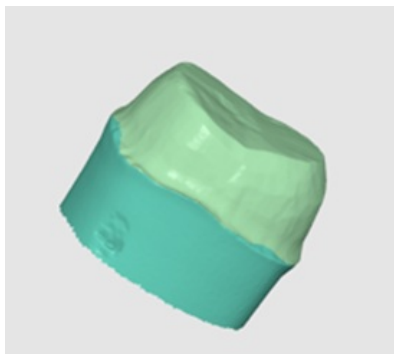

4. Możesz odznaczyć wybrane obszary za pomocą narzędzia Usuń wybrany obszar.



Optymalizuj dopasowanie okluzji

Optymalizacja dopasowania okluzji. Możesz wybrać dane docelowe i dostosować dopasowanie okluzji.

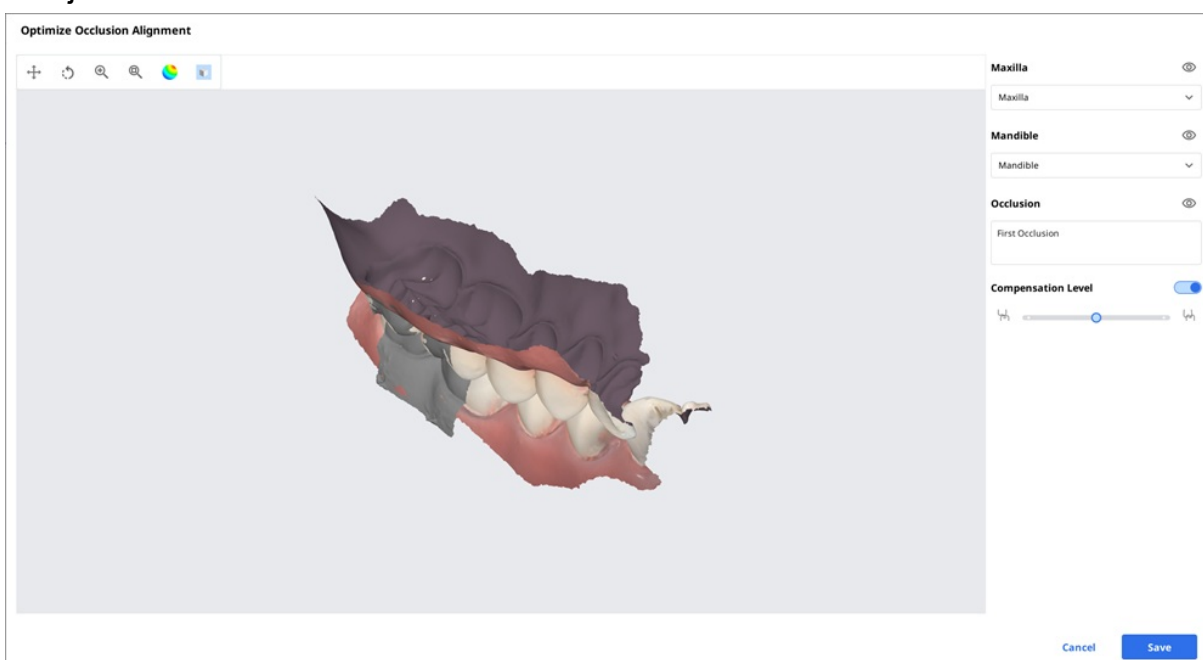


Poziom wyrównania

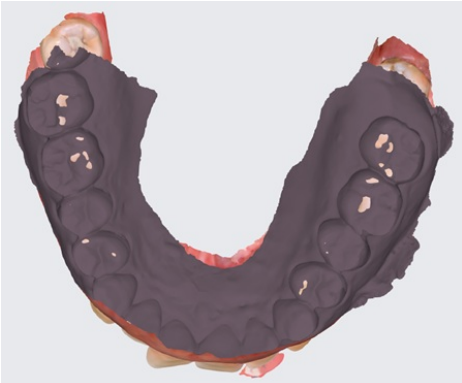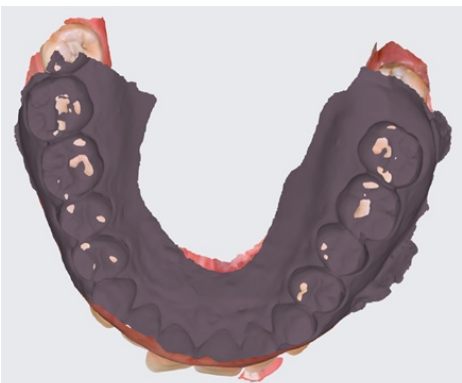

Średni	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☒ $\frac{3}{4}$	
Wysoki	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☒ $\frac{3}{4}$	
Wyłączone	Compensation Level $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{4}$	

Ruch żuchwy

Możesz odtworzyć ruchy żuchwy zarejestrowane w Medit Scan for Clinics, aby zobaczyć dynamiczne kontakty okluzyjne pomiędzy górnym i dolnym uzębieniem.

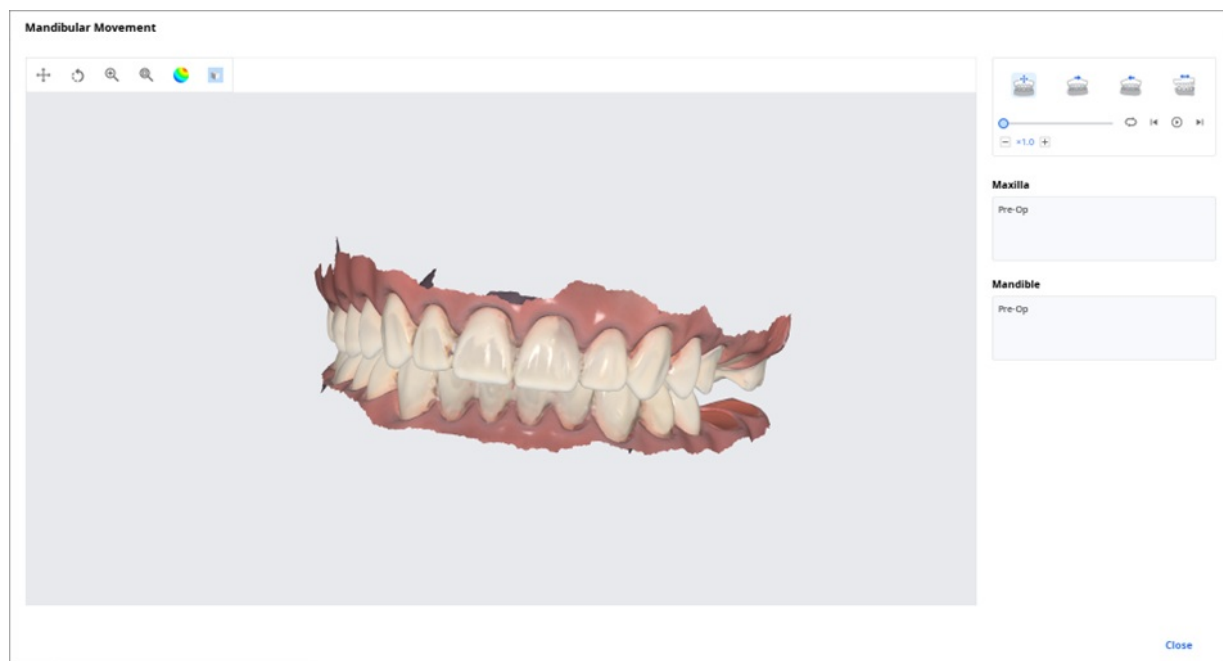

	Ruch swobodny	Odtwórz nagranie swobodnego ruchu żuchwy.
	Lewy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się w lewo.
	Prawy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się w prawo.
	Ruch wysunięty	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się do przodu.

Zarządzaj danymi Wielu okluzji w przeglądarce plików

Możesz uzyskać wiele wyników danych okluzji z aplikacji Medit Scan.

Medit Link udostępnia funkcję zarządzania wynikami poprzez "Przeglądarkę plików".

Jak zarządzać wieloma wynikami


Gdy użytkownik otrzymuje wiele wyników okluzji z Medit Scan for Clinics, Medit Link zapewnia możliwość wyboru wyniku.

Lista wyników jest ułożona według nazw i możesz wybrać jedną pozycję.

Wybrany model zostanie pokazany w "Drzewie danych" i "Obszarze wyświetlania modelu".



Możesz zwinąć listę i zmienić pozycję za pomocą ikon strzałek.

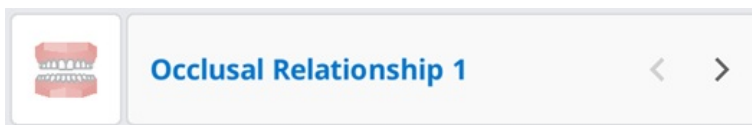

Przeglądaj opcje

Możesz zmienić Opcje przeglądania, aby dostosować układy listy przypadków w Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtry statusu

Pokaż lub ukryj każdy filtr reprezentujący status przypadku. Ukryte filtry statusu nie są wyświetlane na ekranie w Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Dzięki pokazanym filtrom łatwo znajdziesz przypadek, którego potrzebujesz.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

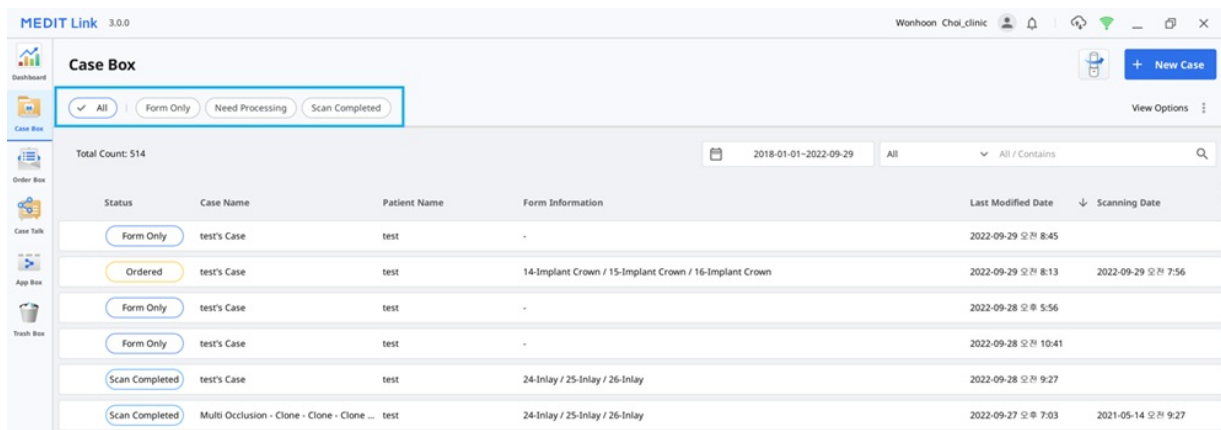

- Możesz kliknąć status, który chcesz zobaczyć, aby wyświetlić tylko przypadki z danym statusem.
- Możesz wybrać wiele statusów jednocześnie.

Dostępne opcje filtrowania dla każdego pola:

Case Box	Wszystkie/Tylko formularze/Wymagają przetwarzania/Skanowanie zakończone/CAD/Zamówienie/Zakończone przypadki
Order Box	Wszystkie/Oczekujące/Anulowane/Odrzucone/Przyjęte/Wysłane/Przypadki zakończone
In Box	Wszystkie/Oczekujące/Anulowane/Odrzucone/Przyjęte/Gotowe/Wysłane/Przypadki zakończone
Work Box	Wszystkie/ Tylko formularze/Wymagają przetwarzania/Skanowanie zakończone/CAD/Wykonane
Trash Box	Nie obsługiwane

Pozycje tabeli

Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na liście przypadków w Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Możesz zmienić kolejność elementów tabeli lub dostosować szerokość kolumn tabeli w widoku listy, aby jak najlepiej zoptymalizować środowisko użytkownika.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Typ przeglądania

Zmień typ przeglądania między Widokiem galerii a Widokiem listy w Case Box.

Widok galerii

MEDIT Link3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

AllForm OnlyNeed ProcessingScan CompletedCADOrderedCase Completed

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28AllAll / Contains

test's Case

test

No Registered Form

2022-10-27 오전 8:59

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown25, 27

Pontic26

2022-10-26 오후 10:24

Scan Completed

Preop 사용한 케이스

straumann

Inlay15

Pontic26

2022-10-26 오후 7:44

Ordered

test's Case

test

Inlay28

Crown16

Custom Abutment +
21, 22, 23, 24, 25, 26

2022-10-26 오후 7:43

Scan Completed

주문테스트 1 - Clone

test

Inlay16, 15, 14, 23, 24, 2...

2022-10-26 오후 12:15

Ordered

TreeTest20221026

test

Crown25, 27

Pontic26

2022-10-26 오전 8:51

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown25, 27

Pontic26

2022-10-25 오전 9:04

Ordered

R2.4.0_TAK_Medit Scan for Clinics_Basic_with ...

2.4.0 Data_TAK

Inlay46

Crown25, 27

Implant Crown16, 36

2More

2022-10-24 오후 3:18

Scan Completed

temporaries

temporaries - Clone - Clone - Clone

주문테스트 1 - Clone - Clone

test's Case

1

Medit Link2.3.0 Release

2

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

3

Implant Crown Zirconia

11, 12, 13, 14,...

3

Inlay Zirconia

3, 4, 5, 6, 7

3

Crown Metal

18, 19, 20, 21,...

+

1

4

2020-09-14 오전 7:43

5

Scan Completed

1	Nazwa przypadku
2	Imię i nazwisko pacjenta oraz data urodzenia
3	Formularz informacji
4	Data skanowania
5	Status przypadku

MEDIT Link 3.0.2
Woonhon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

✓ All |
 Form Only |
 Need Processing |
 Scan Completed |
 CAD |
 Ordered |
 Case Completed

Total Count: 644

📅

2018-01-01~2022-10-28

All

▼ All / Contains

🔍

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Woonhonchoi-Lab
Scan Completed	케이스명모임고주분해보수정한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파알라스트레스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Wybierz opcję grupowania, aby sklasyfikować i zmienić kolejność przypadków na liście według wybranej opcji.

☰ **Sorting** Last Modified Date >

Pole	Grupowanie
Case Box	Brak
	Nazwisko pacjenta
	Data skanowania
	Data zamówienia
Order Box	Brak
	Data skanowania
	Data zamówienia

	Wnioskowana data dostawy
In Box	Brak
	Data zamówienia
	Wnioskowana data dostawy
Work Box	Brak
	Wnioskowana data dostawy

iNota

Opcje grupowania i sortowania są niedostępne w Trash Box i Case Talk.

Sortowanie

Wybierz opcję sortowania, aby zmienić kolejność przypadków na liście zgodnie z wybraną opcją.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting

Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje sortowania:

Pole	Grupowanie	Sortowanie
Case Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Nazwisko pacjenta	Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data zamówienia	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Nazwa laboratorium
Order Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium

	Data zamówienia	Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
In Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Data zamówienia	Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Nazwa kliniki
Work Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki

iNota

Opcje grupowania i sortowania są niedostępne w Trash Box i Case Talk.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Filtr według daty

Filtruj i wyświetlaj przypadki ostatnio zmodyfikowane w określonym czasie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Wybierz czas trwania z listy.

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane wczoraj.
- Minione 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Minione 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ten miesiąc: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w tym miesiącu.
- Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki zmodyfikowane w ciągu poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Wykorzystaj możliwości wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

All

▼

Search / Contains



Następujące kryteria wyszukiwania są dostępne dla każdego pola:

Case Box	Wszystkie, Nazwa przypadku, Nazwa pacjenta, ID pacjenta, Formularz informacji, Nazwa laboratorium
Order Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium, ID zamówienia
In Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia
Work Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, formularz informacji, nazwa kliniki, ID zamówienia

Case Talk	Nazwa przypadku (Zawiera), Nazwa pacjenta (Równa się)
Trash Box (Klinika)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa laboratorium, usunięte przez
Trash Box (Laboratorium)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, usunięte przez

Możesz wybrać Kryteria wyszukiwania i wybrać pomiędzy logiką Zawiera i Równa się.

All
▼
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek

Tworzenie przypadków

Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Wprowadź podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa przypadku.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, którego nie ma na liście pacjentów, zostanie dodany nowy pacjent.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, które znajduje się na liście pacjentów, możesz je wybrać z listy.
 - Jeśli rejestrujesz przypadek dla istniejącego pacjenta, kliknij ikonę Lista pacjentów, aby wybrać istniejącego pacjenta.



- W oknie dialogowym Lista pacjentów można zarejestrować nowego pacjenta lub edytować informacje o istniejącym pacjencie.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.

4. Kliknij "Rejestruj & Skanuj", aby zakończyć rejestrację przypadku i przejść do skanowania.
 - **Rejestruj:** Zostaniesz przekierowany na stronę główną. Jest to przydatne podczas rejestrowania wielu przypadków.
 - **Rejestruj & Skanuj:** Przejście do zakładki Formularz w celu zarejestrowania formularza informacji dla danego przypadku.

Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Wprowadź lub wybierz nazwę kliniki.
3. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę przypadku. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.
4. Wpisz przewidywany termin dostawy z uwzględnieniem terminu zakończenia prac.
5. Po zarejestrowaniu przypadku zostaniesz przekierowany na stronę główną.

Edycja przypadków

Edycja przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Kliknij ikonę "Szukaj", aby zmienić nazwisko pacjenta. Należy pamiętać, że nie można go edytować bezpośrednio; zamiast tego należy znaleźć nazwę pacjenta, którą chce się zastąpić aktualną i można edytować informacje o pacjencie z listy.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Zaznacz nazwisko pacjenta, którym chcesz zastąpić obecne.
4. Aby utworzyć nowego pacjenta, należy nacisnąć przycisk "Nowy pacjent".
5. Za pomocą przycisku "Edytuj" można zmienić zarejestrowane informacje o pacjencie.
6. Kliknij "Zastosuj", aby zakończyć proces.

Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Kliknij "Zastosuj" po zakończeniu edycji.

iNota

Nie możesz edytować informacji o przypadkach otrzymanych poprzez zamówienie w In Box.

Klonowanie przypadków

Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Zostaniesz zapytany, jakie informacje chciałbyś sklonować do nowego przypadku.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Wybierz, czy chcesz powielić tylko formularz informacji, czy wszystkie dane.
4. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".

Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Powiel wszystkie dane, aby stworzyć nowy przypadek.
3. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".


Usuwanie przypadku

Usuń przypadek (klinika i laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Usuń".



2. Kliknij "OK", aby usunąć przypadek.

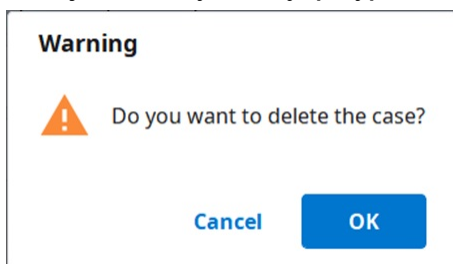

3. Usunięte przypadki są przenoszone do kosza i w razie potrzeby można je odzyskać.

Formularz informacji

Możesz wprowadzić formularz informacji w oparciu o podłączony program i typ leczenia.

Wprowadzone informacje posłużą jako podstawowe informacje do pracy na programach skanujących lub CAD oraz do składania zamówień.

Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.

Wprowadź na zakładce Formularz

1. Wybierz, czy informacje o leczeniu mają być wprowadzane według zębów czy według łuków.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście zamówień.
3. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Wprowadź na zakładce CAD

1. Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania: Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
2. Wybierz numer zęba/łuk/numer matrycy.
3. Określenie ustawień dla opcji szczegółowych i operacji CAD.
4. Kliknij "OK", aby zapisać ustawienia.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście zamówień.
5. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację

Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.

Wprowadź na zakładce Formularz

1. Wybierz program do skanowania, którego chcesz użyć.
2. Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania: Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody mogą się różnić w zależności od wybranego programu skanowania.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zęby	☐	☐
Łuk	☐	☐
Elastyczny multi-die	☒	☐
Multi-die	☒	☐


4. Wybierz numery zębów, łuków lub matryc do procesu skanowania.
5. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście.
6. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Wprowadź na zakładce CAD

1. Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania:
Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
2. Wybierz numer zęba/łuk/numer matrycy.
3. Określenie ustawień dla opcji szczegółowych i operacji CAD.
4. Kliknij "OK", aby zapisać ustawienia.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście.
5. Kliknij "Zapisz".

Łączenie zębów do mostu

Można połączyć wiele zębów w most, gdy ten sam materiał zostanie nałożony na wiele sąsiednich zębów. Kliknij ikonę mostu obok wybranych zębów, aby je połączyć lub rozłączyć.

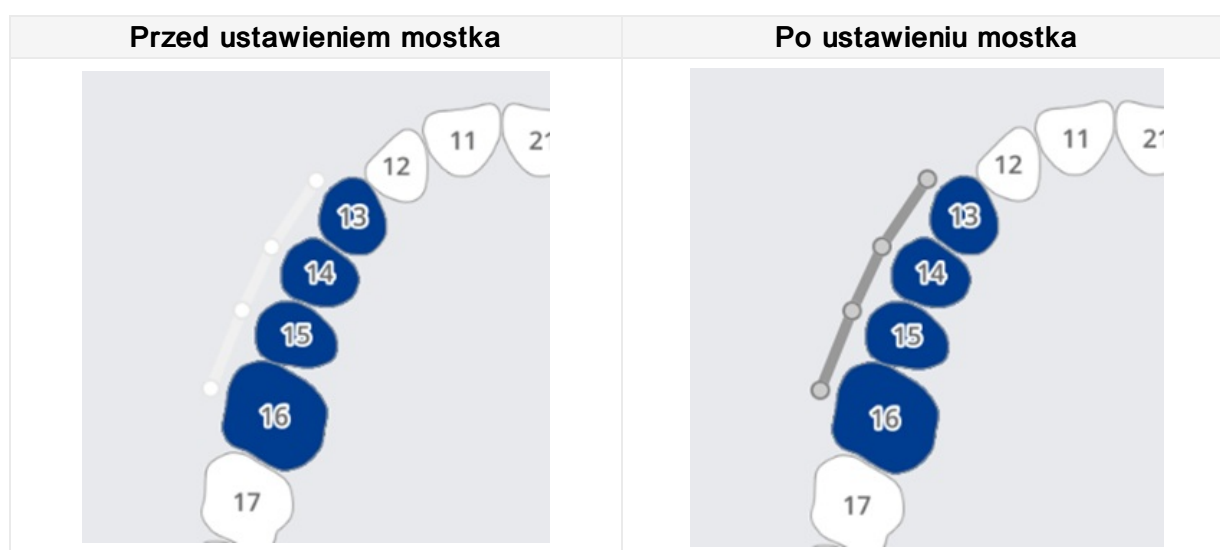

Ustawianie opcji skanowania

W zależności od programu, z którym pracujesz, dostępne są różne opcje skanowania.

Wybrane opcje skanowania są przekazywane do każdego programu skanującego.

Medit Scan for Labs

Ogólne opcje

	Przylegające zęby	Oznacz zęby przygotowane i przylegające, a następnie przekazać te informacje do programu skanującego.
	Przeciwny	Automatycznie oznacza przeciwny i przekazuje tę informację do programu skanującego.
	Artykulator	Wyświetlanie opcji wyboru artykulatora w programie do skanowania.
	Znacznik ruchu	Zezwól na użycie strategii skanowania "Ruch szczęki" w programie skanującym.

Opcje według zębów

	Zeskanowany model	Zezwól na ustawienie strategii skanowania organów w programie skanującym.
	Skan przedoperacyjny	Zezwól na ustawienie strategii skanowania modelu przedoperacyjnego w programie skanującym.
	Skanowanie Wax-Up	Zezwól na ustawienie strategii skanowania wax-upów w programie skanującym.

Dodawanie do ulubionych

Możesz szybko wybrać produkt, rejestrując go jako ulubiony.

Lista zarejestrowanych ulubionych jest zarządzana jako szablon i może być udostępniana poprzez funkcje eksportu i importu.

Dodaj do ulubionych

1. Wybierz numer zęba.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Typ - Metoda - Materiał - Odcienie mogą być zarejestrowane jako ulubione, nawet jeśli nie wszystkie są wybrane.
3. Kliknij ikonę "Gwiazda".

4. Kombinacja wybranych parametrów, z wyłączeniem numeru zęba, znajduje się na liście ulubionych wyszukiwań.

Zarządzaj ulubionymi szablonami

Możesz rejestrować, zarządzać i udostępniać różne typy szablonów.

Dodaj	Dodaj nowy szablon.
Zmień nazwę	Zmień nazwę bieżącego szablonu.
Usuń	Usuń bieżący szablon.
Eksportuj	Eksportuj bieżący szablon do pliku.
Importuj	Importuj plik szablonu.

Praca nad Skanowaniem/CAD

Proces skanowania

Na podstawie wprowadzonych informacji przystępujesz do skanowania.

1. Wprowadź/zapisz informacje o leczeniu i wybierz niezbędne opcje skanowania.
2. Kliknij przycisk "Skanuj" w prawym górnym rogu okna.

Proces CAD

Medit Link jest zintegrowany z exocad.

CAD	Rejestrowanie informacji o leczeniu	Potwierdzenie informacji o leczeniu	Bezpośrednia realizacja CAD	Import wyników CAD z powrotem do Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. W Ustawieniach > Ustaw podłączony program, możesz powiązać wybrany program CAD z listy.
2. Wprowadź/zapisz informacje o zadaniu i opcje projektowe w zakładce CAD.
3. Kliknij "CAD" w prawym górnym rogu okna.
4. Połączony program CAD jest uruchamiany, a dane są wysyłane automatycznie.
5. Zapisz wyniki po wykonaniu CAD.

iNota

Medit Link for Mac nie obsługuje funkcji łączenia z CAD.

Uzyskaj pliki wyników

Eksportuj pliki z wynikami skanowania

Dodatkowo, oprócz dzielenia się wynikami z partnerami poprzez zamówienia, Medit Link pozwala na zapisanie wyników w wybranym formacie pliku za pomocą funkcji eksportu.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export


Eksportuj pliki do	Określa ścieżkę, gdzie chcesz przechowywać wyniki.
Nazwa folderu	System tworzy nowy folder i przechowuje w nim wszystkie wyniki. Domyślna nazwa folderu jest ustalana przez regułę nazewnictwa. Ale możesz zmienić nazwę folderu bezpośrednio. Możesz zdefiniować regułę nazewnictwa poprzez Ustawienia > Opcje eksportu > Reguły dla nazwy folderu.
Nazwa pliku	Ustawia nazwę pliku dla wyniku. Reguła nazewnictwa ustawia domyślną nazwę pliku. Ale możesz zmienić nazwę pliku bezpośrednio. Możesz określić regułę nazewnictwa poprzez Ustawienia > Opcje eksportu > Reguły dla nazwy pliku.
Typ CAD	Wybierz program CAD, który ma być używany w programie projektowym. Medit Link dostosuje pliki na podstawie tego wyboru, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez dodatkowego dopasowania osi.
Format siatki	Określa format pliku siatki.
Format obrazu	Określa format eksportowanych plików obrazów.
Kompresja plików	Kompresuje wszystkie wyniki do jednego pliku.

Połącz indywidualną siatkę	Łączy wynik szczęki lub żuchwy z indywidualnym zębem. Przydatne, gdy import kilku plików do programu nie jest możliwy.
Eksportuj wszystkie relacje okluzyjne	Kiedy wiele wyników okluzji jest generowanych z aplikacji skanującej, można wyeksportować wszystkie wyniki okluzji jednocześnie.
Zapisz informacje o przypadku w formacie PDF	Zapisz informacje o przypadkach jako pdf z wynikiem.

Eksportuj wybrane pliki

Medit Link udostępnia funkcję eksportu z rozwiniętego menu w przeglądarce plików. Użyj tego, a możesz łatwo wyeksportować wybrane pliki.

1. Kliknij ikonę "Menu" obok grupy danych lub podmiotu w drzewie danych przeglądarki plików.
2. Następnie kliknij "Eksportuj".

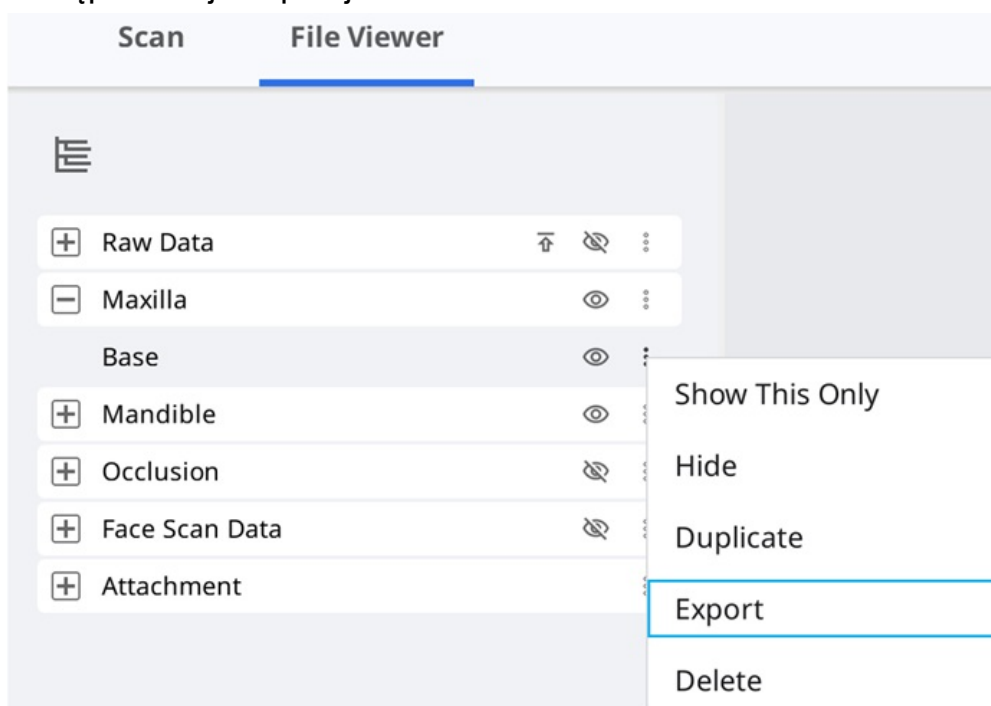

3. W oknie dialogowym eksportu widoczne są tylko wybrane pliki, które mają być eksportowane.

Export Files in This Case

Options File List

☒

- ☒ Maxilla
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Occlusion
 - ☒ First Occlusion

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close **Export**

4. Na koniec kliknij "Eksportuj".

Eksport linii brzegowej


Medit Scan for Clinics zapewnia funkcję tworzenia linii brzegowej, a Medit Link może przenieść linię brzegową do programu CAD.

Eksportuj linię brzegową jako kolor

Ogólnie rzecz biorąc, Medit Link konwertuje linię brzegową jako kolor i eksportuje wynik ze szczęką lub żuchwą razem. Możesz utworzyć linię brzegową w programie cad, odwołując się do informacji o kolorze.

Przykład:

Szczęka

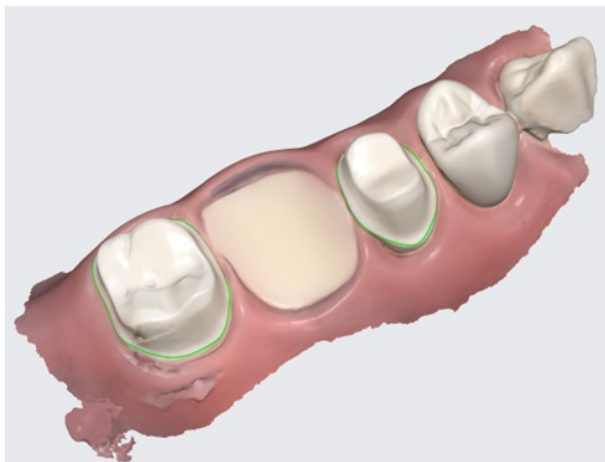

Wynik z linią brzegową jako kolorem

iNota

Ta funkcja jest dostępna dla formatów zawierających informacje o kolorze, takich jak meditMesh, OBJ i PLY. Linia brzegowa nie konwertuje się do STL.

iNota

Typ CAD > 3shape nie obsługuje tej funkcji.

Eksportuj linię brzegową jako plik

W przypadku programu Exocad, Medit Link eksportuje linię brzegową do pliku "~margin.xyz", który można zaimportować bezpośrednio do programu Exocad.

Możesz użyć tego pliku w exocad bez dodatkowej pracy.

Przykład:

Szczeka	Linia brzegowa
---------	----------------



Eksportuj listę przypadków jako CSV

Medit Link udostępnia funkcję eksportu listy przypadków w formacie CSV.


Możesz eksportować listę przypadków z podstawowymi informacjami i łatwo zarządzać przypadkami.

Funkcja "Eksport do CSV" dostępna jest w poniższym menu aplikacji Medit Link.

- In Box
- Work Box

Jak wyeksportować listę przypadków

1. Przejdź do In Box lub Work Box.
2. Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować.

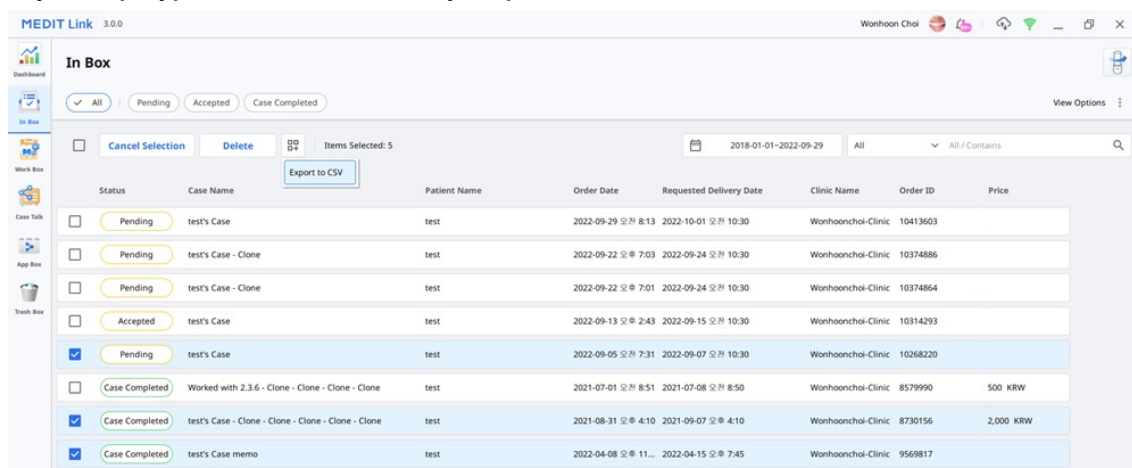

3. Kliknij przycisk "Rozszerzone menu" u góry, aby wybrać opcję "Eksportuj do CSV".



4. Zdefiniuj ścieżkę i nazwę pliku, a następnie zapisz wyniki.

Pobierz pliki z Medit Link Web

Medit Link udostępnia funkcję pobierania plików.

Jeśli chcesz uzyskać pliki wynikowe bez instalowania aplikacji Medit Link, możesz pobrać pliki z serwisu internetowego Medit Link.

iNota


Dane należy wgrać do Medit Cloud, aby pobrać pliki z sieci.

Funkcja pobierania jest dostępna w poniższym menu serwisu internetowego Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Pobierz".

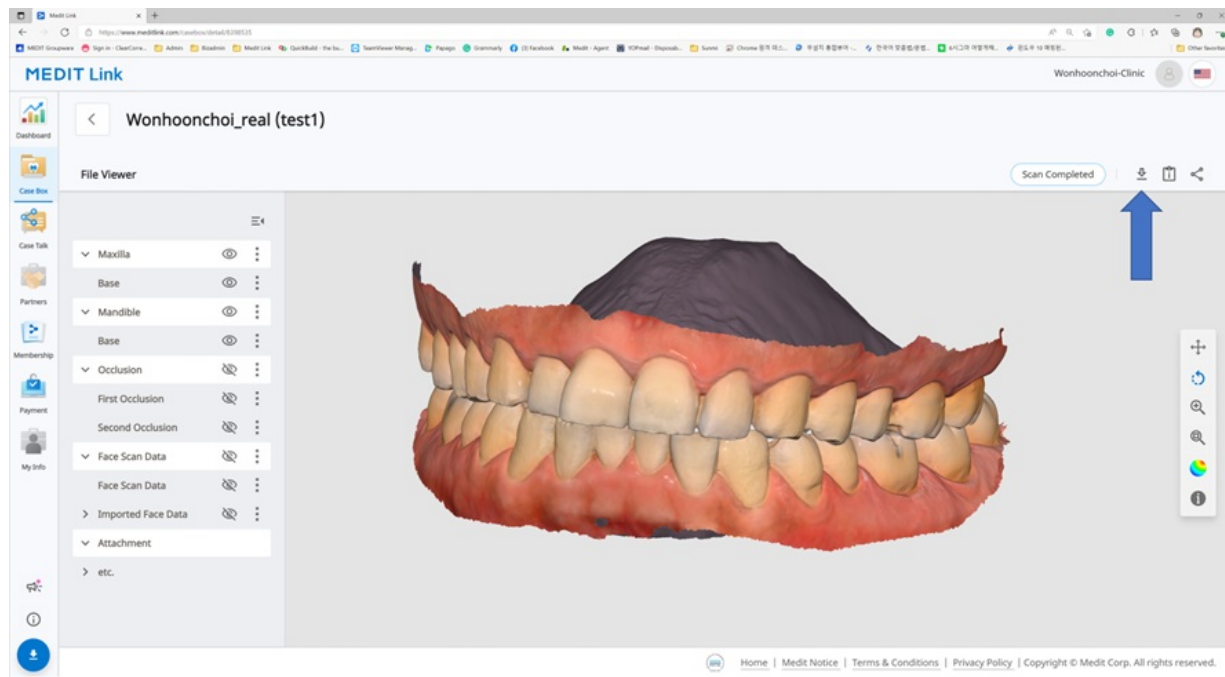

Web Viewer

Gdy udostępniasz przypadek za pomocą Case Talk, możesz ustawić, czy zezwolić na pobieranie, czy nie.

Jeśli zaznaczysz "Udzielenie pozwolenia na pobranie" i udostępnisz przypadek, wszyscy użytkownicy, którzy połączą się z udostępnionym linkiem, mogą pobrać pliki.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** *Premium Feature*

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

W przeglądarce internetowej w prawym górnym rogu znajduje się ikona "Pobierz".

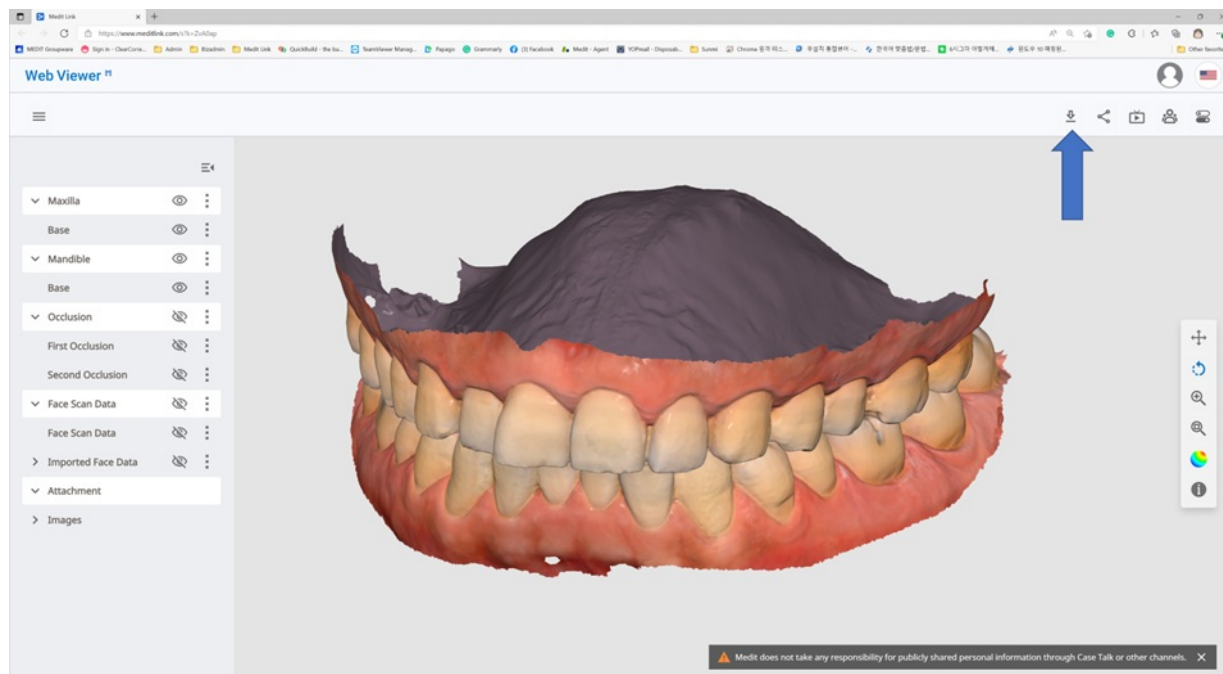

Jak pobrać

1. Kliknij "Pobierz".



2. Wybierz format siatki w oknie dialogowym pobierania.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) **OK**

3. Następnie kliknij "OK".

Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami

W prosty sposób można zamówić przypadek z danymi pozyskanymi z połączonych programów i dołączonymi przez użytkownika.

Zamawianie przypadków

Możesz złożyć zamówienie dla swoich partnerów w Case Box.

1. Kliknij przycisk "Zamów".
2. Sprawdź informacje wymagane dla Twojego zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Wybierz partnera.
4. Sprawdź informacje o produkcie z zakładki Lista zamówień.
 - Możesz zdecydować, czy udostępnić nazwisko pacjenta.
5. Zaznacz pliki do zamówienia z zakładki Lista plików.
6. Wprowadź pożądaną datę dostawy.
 - Domyślnie ustawiona jest wartość 7 dni od daty zamówienia.
7. Możesz dodać notatkę i tagi dla swojego partnera, aby nakreślić konkretne szczegóły.
8. Kiedy z aplikacji skanującej generowanych jest wiele wyników okluzyjnych, możesz wysłać wszystkie wyniki okluzyjne jednocześnie, zaznaczając opcję "Zamów Uporządkuj wszystkie relacje okluzyjne".
9. Kontynuuj swoje zamówienie.
 - **Pomiń płatność:** Kontynuuj realizację zamówienia bez korzystania z systemu płatności udostępnionego przez Medit Link. Dostępne przy zamówieniu u zakontraktowanego partnera.
 - **Płatność:** Skorzystaj z systemu płatności udostępnionego przez Medit Link, aby kontynuować realizację zamówienia. Dostępne przy zamówieniu u zakontraktowanego partnera.

- **OK:** Kontynuujemy realizację zamówienia bez żadnych warunków dotyczących ceny produktu. Dostępne podczas składania zamówienia w firmie, z którą współpracujesz, ale z którą nie masz umowy.


iNota

Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link w Chinach.

- Pomiń płatność
- Płatność


Potwierdź zamówienie (In Box)

- Zaakceptuj zamówienie po jego otrzymaniu.
- Zaakceptowane zamówienia zostaną przekazane do Work Box.

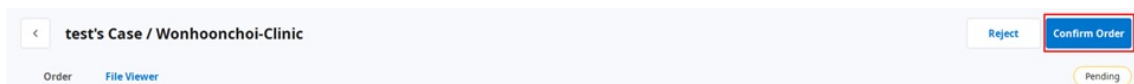


Anuluj zamówienie (Order Box)

- Możesz anulować zamówienie zanim Twój partner je zaakceptuje.
- Anulowane przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

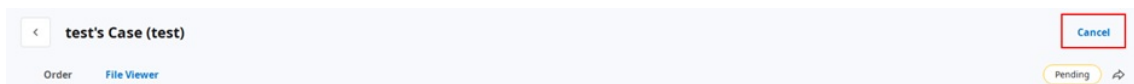

Odrzucenie zamówienia (In Box)

- Możesz odrzucić otrzymane zamówienie.
- Odrzucone przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

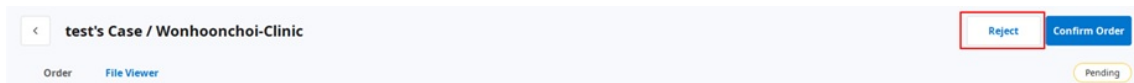

Sprawdzanie zamówionych przypadków

Możesz sprawdzić szczegóły zamówionego przypadku w Order Box na koncie kliniki. Możesz również sprawdzić przypadek, który otrzymałeś z In Box na koncie laboratorium.

Order Details:

- Order ID: 5718975
- Patient Name: test
- Partner Name: wonhoonchoi Beta
- Scan Date: 2020-11-10 06:18
- Order Date: 2020-11-10 06:18
- Requested Delivery Date: 2020-11-24 06:15
- Expected Delivery Date: 2020-11-24 06:15
- Memo: [Empty text area]
- Tag: [Empty text area]

Order List:

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total: USD 4.00

Informacje o zamówieniu	Informacje, które mogą być zawarte w zamówieniu, są następujące: ID zamówienia/nazwa pacjenta/nazwa konta/data skanowania/data zamówienia/data dostarczenia/data wymagalności dostawy/notatka. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące zamówionego produktu i informacje o dostawie.
Lista zamówień	Na liście zamówień wyświetlane są szczegóły dotyczące zamówionego produktu.
Wysyłka	Wprowadź/sprawdź informacje dotyczące wysyłki.

Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)

Wprowadź informacje o wysyłce zakończonego przypadku i rozpocznij wysyłkę.

1. Kliknij zakładkę Przesyłka.
2. Wprowadź informacje o przesyłce i kliknij "Zarejestruj".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company: Tracking Number:

Memo:

[Cancel](#) [Register](#)


3. Wprowadzone informacje są wysyłane do partnera.

Zarządzanie terminem dostawy

Możesz ustawić oczekiwaną datę dostawy podczas składania zamówienia, a informacja ta zostanie przekazana Twojemu partnerowi.

Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)


- Przy zamówieniu w Case Box można wpisać wnioskowany termin dostawy.

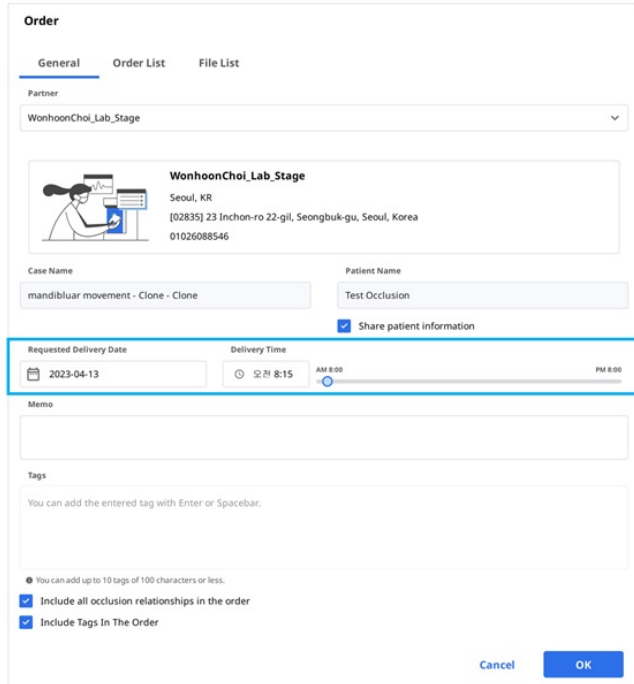

- Domyślna wartość to 7 dni od daty złożenia zamówienia.
- Wpisz datę/godzinę, w której chcesz otrzymać produkty i przejdź do zamówienia.
- Możesz łatwo ustawić czas za pomocą suwaka.

Ustawianie przewidywanej daty dostawy (konto kliniki)

- Możesz wprowadzić przewidywaną datę dostawy dla przypadku zamówionego w In Box.

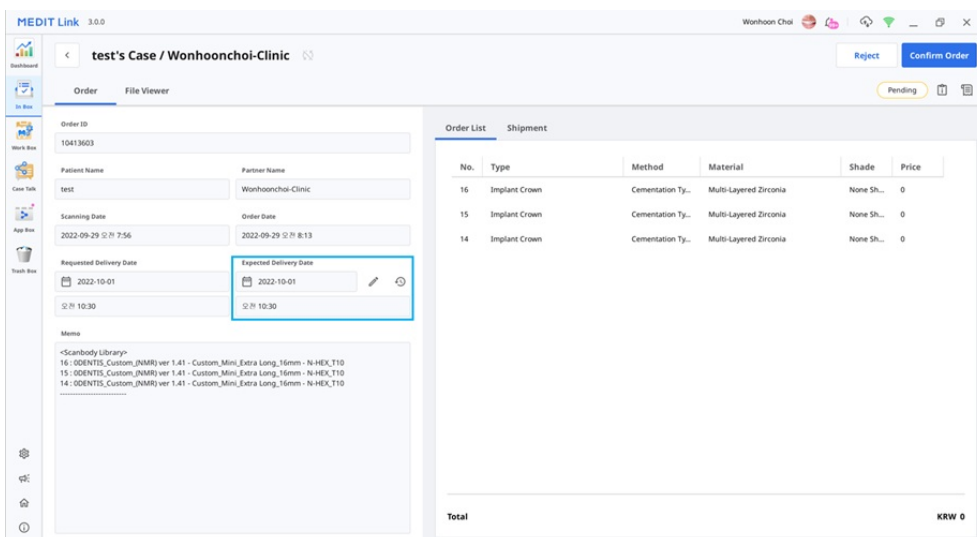

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0


1. Sprawdź wnioskowany termin dostawy z partnerem i zmień termin za pomocą przycisku "Edytuj".



2. Wprowadź przewidywaną datę dostawy biorąc pod uwagę faktyczny dzień roboczy. W

razie potrzeby możesz też zostawić komentarz.

3. Kliknij "Zastosuj".

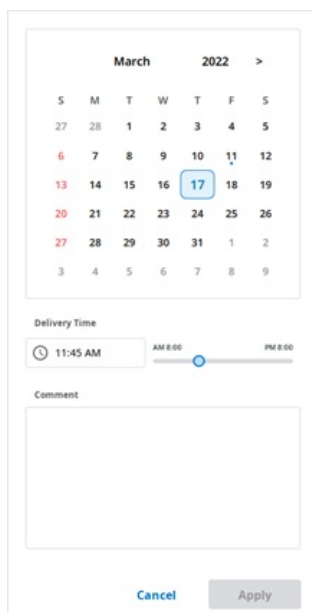

The screenshot shows a date selection calendar for March 2022. The date 17 is highlighted. Below the calendar is a 'Delivery Time' section with a time picker set to 11:45 AM. At the bottom is a 'Comment' text area and two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Przewidywany termin dostawy oraz notatka zostaną przekazane wraz z zamówieniem.

- Możesz sprawdzić datę i notatki w Order Box.
- Możesz zmienić przewidywaną datę dostawy, a zmiany zostaną przekazane Twojemu partnerowi.

5. Możesz sprawdzić historię przypadków za pomocą przycisku "Historia".



Zakończenie przypadków

Zakończ (Work Box/In Box)


Gdy wszystkie zadania zostaną wykonane, naciśnij "Gotowe", aby zakończyć przypadek.

Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku

Możesz znaleźć przycisk "Menu" po prawej stronie od przycisku Otwórz.



Zakończ pracę, klikając ikonę "Menu" i wybierając "Gotowe".

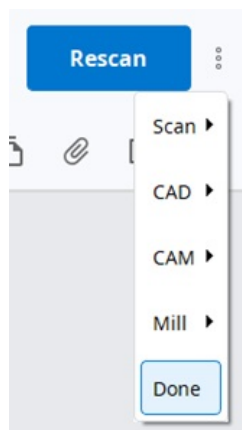


Zakończ wiele przypadków z listy przypadków

Po wybraniu przypadków z Work Box, na górze listy znajduje się przycisk rozwiniętego menu.



Zakończ wiele przypadków w następujący sposób:

1. Przejdź do Work Box.
2. Wybierz wszystkie przypadki do zakończenia.

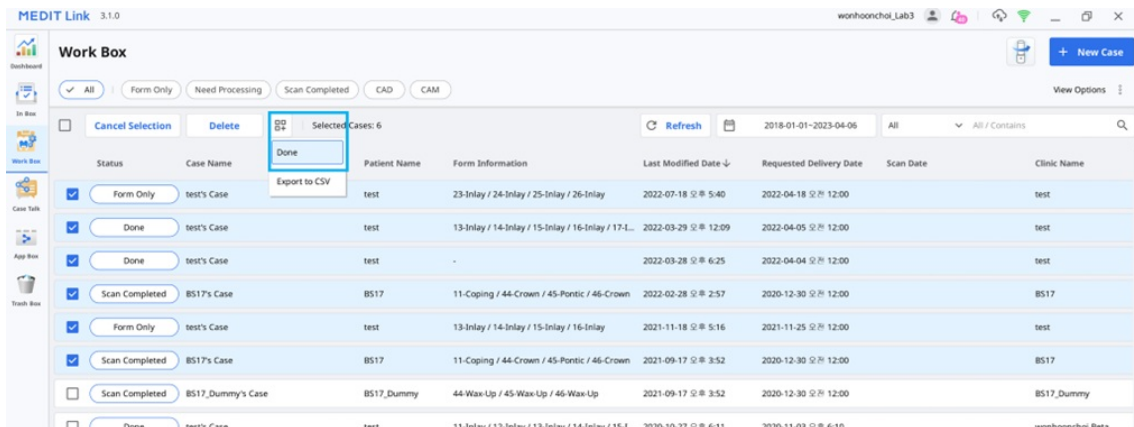

3. Kliknij wspomniany wyżej przycisk "Rozwinięte menu".




4. Wybierz "Gotowe" z listy

Zakończ (Case Box/Order Box)

Po zakończeniu przypadku z laboratorium, klinika musi potwierdzić przypadek, aby zakończyć cały proces zamówienia.

Jeśli laboratorium zakończy swoją pracę, klinika może znaleźć funkcję "Potwierdź dostawę" w Order Box.


Kliknij to, cały proces zamówienia zostanie zakończony, a status przypadku zostanie zmieniony na "Przypadek zakończony".

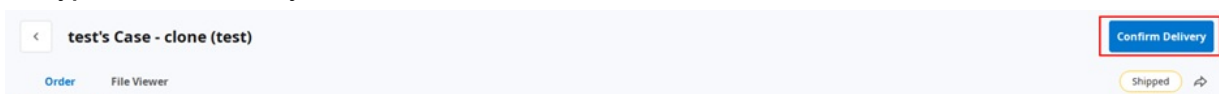

Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.

Dla przypadków, które nie zostały zamówione do Laboratorium, możesz zakończyć je w Case Box.

1. Przejdź do Case Box.
2. Wybierz przypadek, który chcesz zakończyć.

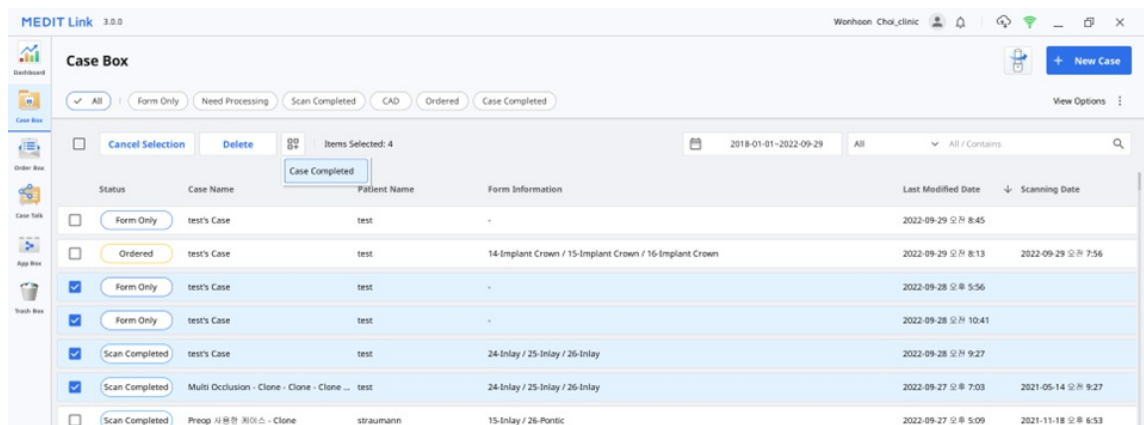

3. Kliknij przycisk "Rozwinięte menu".



4. Wybierz "Przypadek zakończony".

Komunikuj się za pomocą tagów

Możesz dodać dodatkowe informacje dotyczące przypadku za pomocą tagów i wysłać je do swoich partnerów.

Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku

Możesz wprowadzić tagi podczas tworzenia nowego przypadku lub edytowania informacji o nim.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

CancelRegisterRegister & Scan

Możesz łatwo wyszukiwać i wybierać tagi, których używałeś wcześniej.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions
tet
tagtest
tag
tat2

Dodaj tagi podczas składania zamówienia

Możesz sprawdzać i edytować tagi w oknie dialogowym Zamówienie podczas składania zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.

