

USER GUIDE

Medit Link

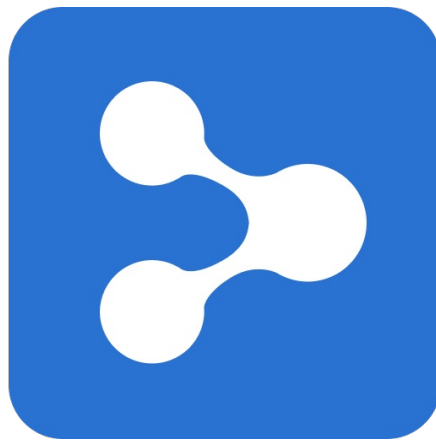


Table of Contents

Medit Link

Introduktion	6
Medit Link	6
Tjänsteöversikt	6
Molntjänst	7
Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem	7

Medit Link > Installation

Systemkrav	8
Systemkrav för Windows	8
Systemkrav för macOS	8
Systemkrav för webbtjänst	8
Rekommenderade webbläsare	8
Lägsta krav för mobila enheter	8
Installation på Windows	9
Installation på macOS	11
Medit Link är installerat som ett paket tillsammans med Medit Scan for Clinics.	11

Medit Link > Medit Links webbsida

Översikt	15
Dashboard	16
Översikt över dashboard	16
Medit Insights	16
Prenumerera på Medit Insights	17
Avsluta prenumerationen på Medit Insights	18
Case Box/Work Box	19
Fallfiltrering	19
Filtrering enligt status	19
Filtrera enligt tidslängd	19
Filtrering enligt sökning	20
Falldetaljer	20
Order Box/In Box	22
Beställningsuppgifter	22
Tabbar i Order Box/In Box	22
Case Talk	23
Skapa en Case Talk	23
Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ	24
Case Talk-detaljer	26
Web Viewer	26
Anteckning	27
Kommentarer	28
Skärmdelning i realtid	29
Dataträd	29
Kontroller för dataträd	29
3D-modellkontroll	30
Partners	31
Sök efter partners	31
Min partnerlista	31
Partnerinbjudan	32
Medlemskap	33
Medlemskap	33
Min plan	33

Molnlagring	34
Prenumerera	35
Avsluta prenumerationen	36
Faktureringsinformation	38
Så lägger du till en betalningsmetod	38
Så ändrar du betalningsmetod	40
Utnyttja	41
Registrera inlösenkod	41
Aktivera inlösenkod	42
Betalning	44
Betalningsuppgifter (Klinik & labbkonton)	44
Betalkontoinformation (endast labbkonto)	44
Min information	45
Mitt konto	45
Min organisation (endast administratörskonto)	45
Min skanner	46
Min prislista (Lab: endast administratörskonto)	46
Annan meny	47
Notifiera & uppdatera	47
Information från Medit	47
Ladda ner Medit Link-appen	47

Medit Link > Medit Link-appen

Översikt	49
Boxöversikt	49
Titelfält	51
Min information	51
Aviseringar	51
Fallsynkroniseringsansvarig	52
Ladda upp	53
Ladda ner	53
Nätverksstatus	54
Meny	55
Dashborad	55
Case Box/Work Box	55
Tabbar i Case Box/Work Box	56
Funktioner i Case Box/Work Box	56
Order Box/In Box	57
Tabbar i Order Box/In Box	58
Case Talk	58
App Box	58
Trash Box	59
Inställningar	59
Patienthantering	60
Lägg till ny patient	60
Radera patient	60
Sammanfoga patienter	61
Meddelande & uppdateringar	62
Gå till Medit Links webbsida	62
Information från Medit	62
Inställningar	63
Allmänt	63
Lagringshantering	64
Ställ in period	64
Lokal lagring	64
Molnlagring	64

Ställ in anslutna program	65
Exporteringsalternativ	65
Fallkonverteringsverktyg	67
Så använder du Fallkonverteringsverktyg	67
Proxyalternativ	69
Om	69
Användarguide	70
Filvisning	71
Dataträd	71
Modellkontrollverktyg	71
3D-modellkontroll	71
2D-bildkontroll	72
Funktionsverktyg	73
Skärminspelning och memo	73
Orto-inspelning	73
Fyll hål	74
Trimning	74
Optimera ocklusionsinriktning	77
Underkäkesrörelse	78
Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning	79
Så hanterar du flera resultat	79
Visa alternativ	81
Statusfilter	81
Tabellobjekt	82
Visningstyp	83
Gallerivisning	84
Listvisning	85
Gruppering	85
Sortering	86
Filtrering och sök	88
Filtrering enligt datum	88
Avancerade sökfunktioner	88

Medit Link > Arbetsflöde

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall	90
Skapa fall	90
Skapa fall i Case Box (klinik)	90
Skapa fall i Work Box (Lab)	91
Redigera fall	91
Skapa fall i Case Box (Klinik)	91
Redigera fall i Work Box (Lab)	92
Klona fall	93
Klona fall i Case Box (Klinik)	93
Klona fall i Work Box (Lab)	93
Radera fall	93
Radera fall (Klinik och Lab)	93
Forminformation	95
Registrering av forminformation i Case Box	95
Gå in på fliken Form	95
Gå in på fliken CAD	95
Registrering av forminformation i Work Box	95
Gå in på fliken Form	95
Gå in på fliken CAD	96
Lägg till tänder till en brygga	96
Inställning av skanningsalternativ	96
Medit Scan for Labs	96

Allmänna alternativ	96
Alternativ enligt tänder	96
Lägg till i Favoriter	97
Lägg till i Favoriter	97
Hantera favoritmallar	97
Jobba med skanning/CAD	98
Skanningsprocess	98
CAD-process	98
Hämta resultatfiler	99
Exportera skanningsresultatfiler	99
Exportera valda filer	100
Exportera marginallinjen	101
Exportera marginallinjen i färg	101
Exportera marginallinjen i färg	102
Exportera fallista som CSV	103
Så exporterar du fallistan	103
Ladda ner filer från Medit Links webbsida	104
Case Box/Work Box	104
Web Viewer	104
Så laddar du ner	105
Beställ/Hantera fall	107
Du kan enkelt beställa ett fall med data inhämtade från anslutna program och bifogade användardata.	107
Beställa fall	107
Bekräfta beställning (In Box)	108
Avbryt beställning (Order Box)	108
Avvisa beställning (In Box)	108
Kontrollera beställda fall	108
Ange fraktinformation (In Box)	109
Hantera leveransdatum	109
Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)	109
Slutföra fall	111
Slutfört (Work Box/In Box)	111
Slutför ett fall i falldetaljer	111
Slutför flera fall i fallistan	112
Slutfört (Case Box/Order Box)	112
Slutför att fall som inte beställts i Case Box	112
Kommunicera med hjälp av taggar	114
Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall	114
Lägg till taggar vid beställning	115
Kontrollera taggar på Falldetaljer	115

Introduktion

Medit Link

Medit Link är ett samarbetsverktyg utformat för att underlätta kommunikation mellan kliniker och labb för att tillhandahålla optimerade arbetsflöden för alla parter.

Det tillhandahåller differentierade funktioner baserat på typen och behörigheterna för varje konto. Programmet har ett användarvänligt användargränssnitt för hantering av arbetsflödet, från skanning med orala och modellskannrar och fallbeställning till design och prototillverkning.

Medit Link utgörs av en webbtjänst och en datorapplikation.

Tjänsteöversikt

		Web	App
		• Registrera och hantera kontot • Sök • Sök och hantera partners • Dela fall via Web Viewer med en delningsbar länk • Tillgång till fall skapade i appen • Hantera beställningar	• Ange forminformation • Skanna • Lägg/ta emot beställningar och gör betalningar • Länka med CAD • Hantera patienter
Klinik	Admin	Sök och hantera partners och din organisation, hantera betalningsinformation och dela fall. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Medlemskap - Betalning - Min info	Ange forminformation, skanna, länka till CAD, gör beställningar, gör betalningar och hantera patienter. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Patienthantering
	Medlem	- Case Box - Case Talk - Min information	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Labb	Admin	Sök och hantera partners och din organisation, hantera betalningsinformation och dela fall. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Medlemskap - Betalning - Min info	Ange forminformation, skanna, länka till CAD och ta emot/hantera beställningar. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Medlem	- Work Box - Case Talk - Min information	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Betalning

Molntjänst

Medit Link stöder automatisk uppladdning/nedladdning av databaser och filer via AWS (Amazon Web Services).

Data som sparas i molnet synkroniseras automatiskt till andra datorer i organisationen så att alla användare kan komma åt samma data från vilken dator som helst när som helst. Molnbaserad säkerhetskopiering och återställning håller all din data säker. Det håller dina data säkra även i händelse av dataförlust på grund av plötsligt datorfel.

Med molntjänsten kan tandläkare och laboratorier som samarbetar snabbt dela data och slippa skicka e-post eller manuellt överföra skanningarna. All data inklusive patientinformation är säkert krypterad, lagrad och överförd. Medit följer medicinska lagar och förordningar som HIPAA och GDPR.

Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem

Medit Link tillhandahåller beställnings- och betalningssystem.

- Med Medit Link kan du skapa kontrakt mellan tandläkare och tandlaboratorier och dela data snabbt och enkelt.
- Du kan kontrollera och hantera beställningsstatus.

Kreditkortsstödda system fungerar med betalningsmoduler via onlinebetalningsplattformar, såsom Stripe (www.stripe.com) och I'mPort (<http://www.iamport.kr>), vilket gör betaltjänsterna enkla och bekväma att hantera.

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Betalning

Systemkrav

iNot

Kontrollera systemkraven för Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs om du vill använda skanningsmjukvaran med din skanner.

Systemkrav för Windows

	Laptop & Skrivbord
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz eller högre
RAM	16 GB eller högre
Grafik	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) eller högre/eller motsvarande AMD-videokort
OS	Windows 8 64 Bit (inte tillgängligt i 32 Bit) eller högre

Systemkrav för macOS

	Mac
Processor	M1 med 8-kärnig, 7-kärnig GPU, 16-kärnig Neural Engine
RAM	16 GB eller högre
OS	Monterey 12

Systemkrav för webbtjänst

Rekommenderade webbläsare

	Webbläsare
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Lägsta krav för mobila enheter

Typ	Android	iOS
Enhet	Motsvarande till Galaxy S7 eller högre	Motsvarande till iPhone 7 eller högre
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB eller högre	2 GB eller högre
AP	Över Snapdragon 710	A10 Fusion


Installation på Windows

Medit Link är installerat som ett paket med skanningsprogrammen Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs.


1. Kör Medit_LinkSetup.exe.
2. Välj språk för installationen.
3. Välj mappen där du vill installera Medit Link. Vänligen läs och godkänn licensvillkoren och klicka på "INSTALLERA".

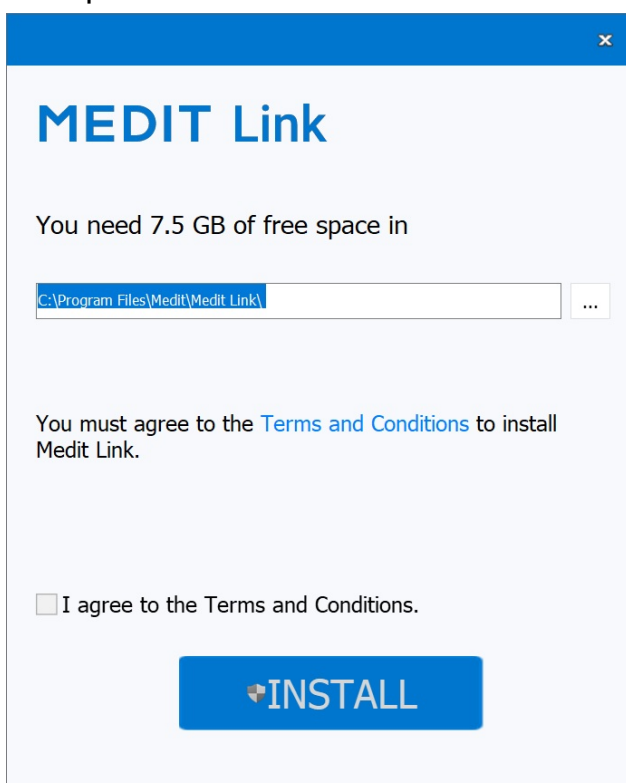

4. Se till att skannerkabeln är bortkopplad från datorn innan du går vidare till nästa steg. Installationen kanske inte startar om skannern är ansluten till din dator.
5. Programmet installeras automatiskt. Detta kan ta några minuter. Stäng inte av eller koppla ur datorn förrän installationen är klar.

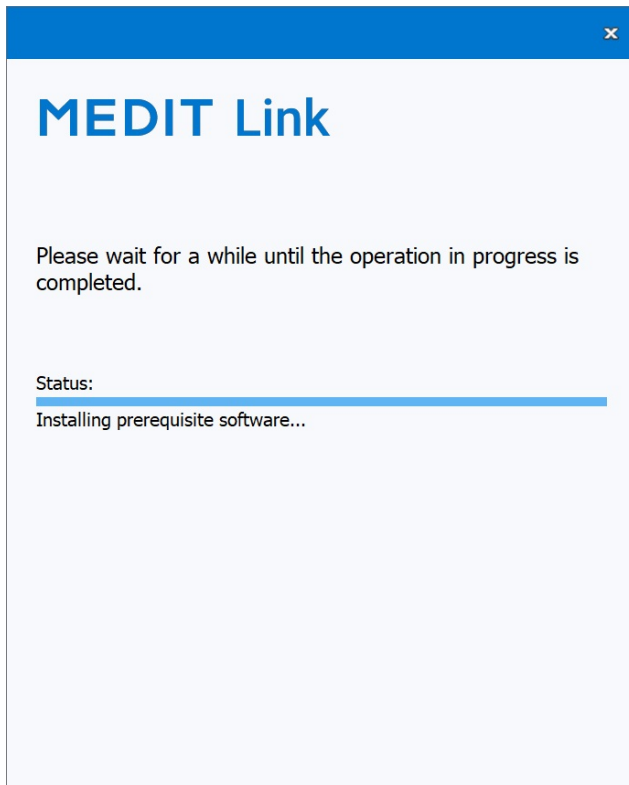

6. Starta om datorn när installationen är slutförd. Du kan gå vidare utan att starta om datorn om du inte har skannern.

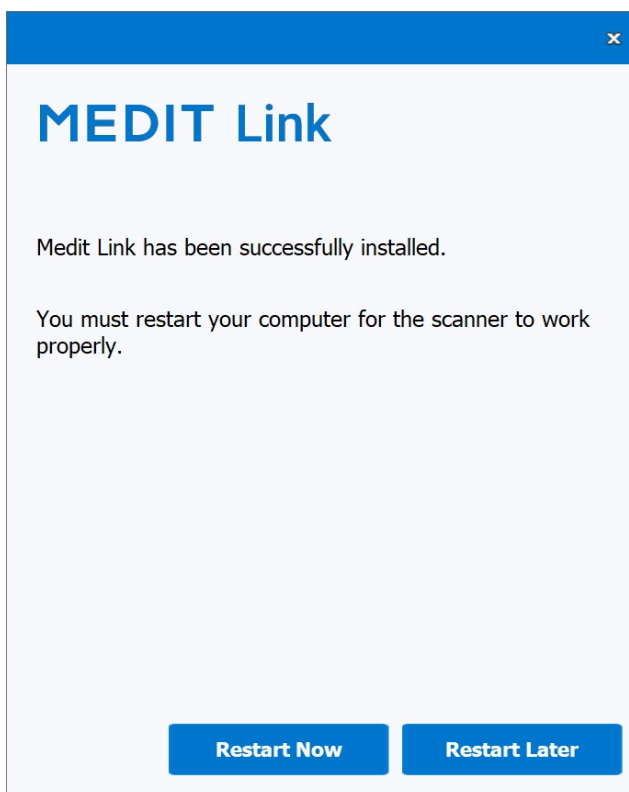


iNot

Om du inte startar om datorn efter att installationen är slutförd kan det hända att skannern inte fungerar korrekt.


Installation på macOS

Medit Link är installerat som ett paket tillsammans med Medit Scan for Clinics.


1. Kör Medit_Link_x.x.x.pkg och klicka på "Fortsätt".

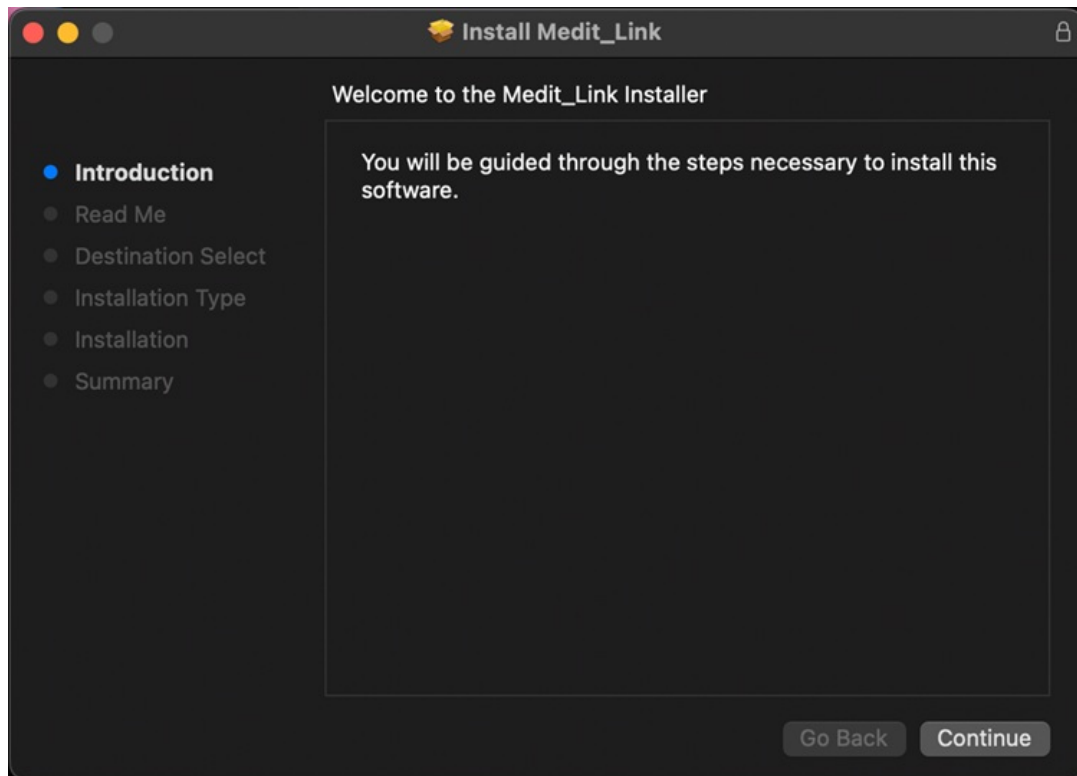


2. Läs slutanvändarlicensavtalet och klicka på "Fortsätt".

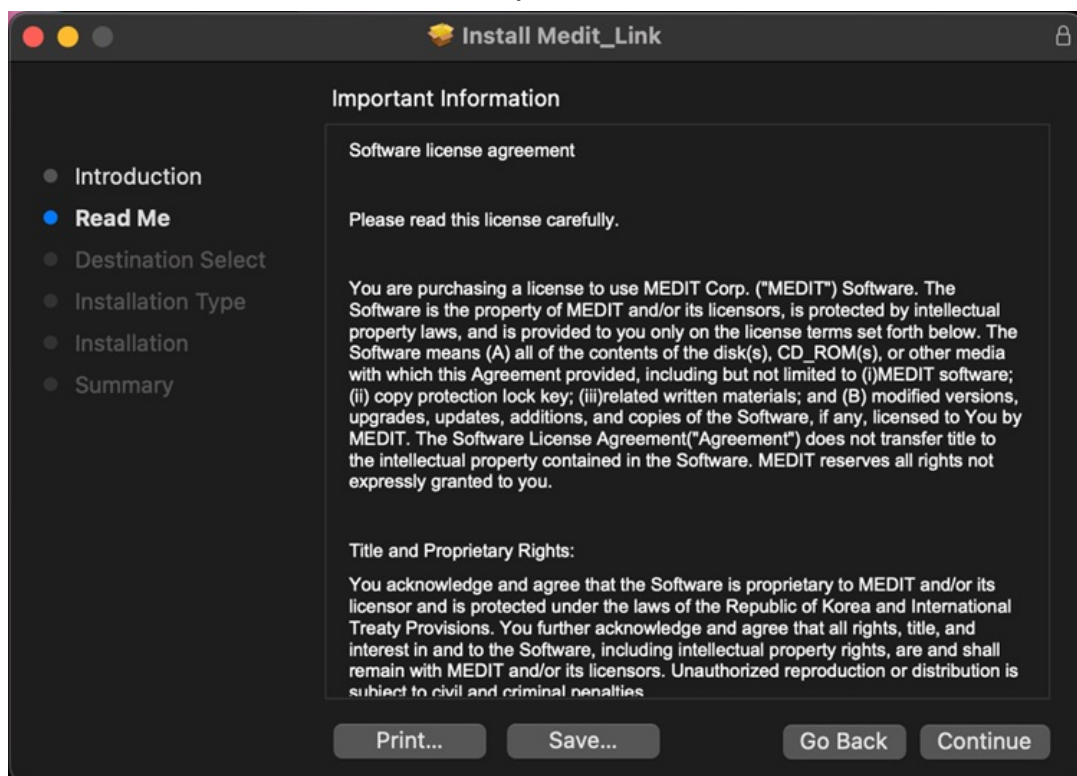

3. Välj skivan som ska installeras och klicka på "Fortsätt".

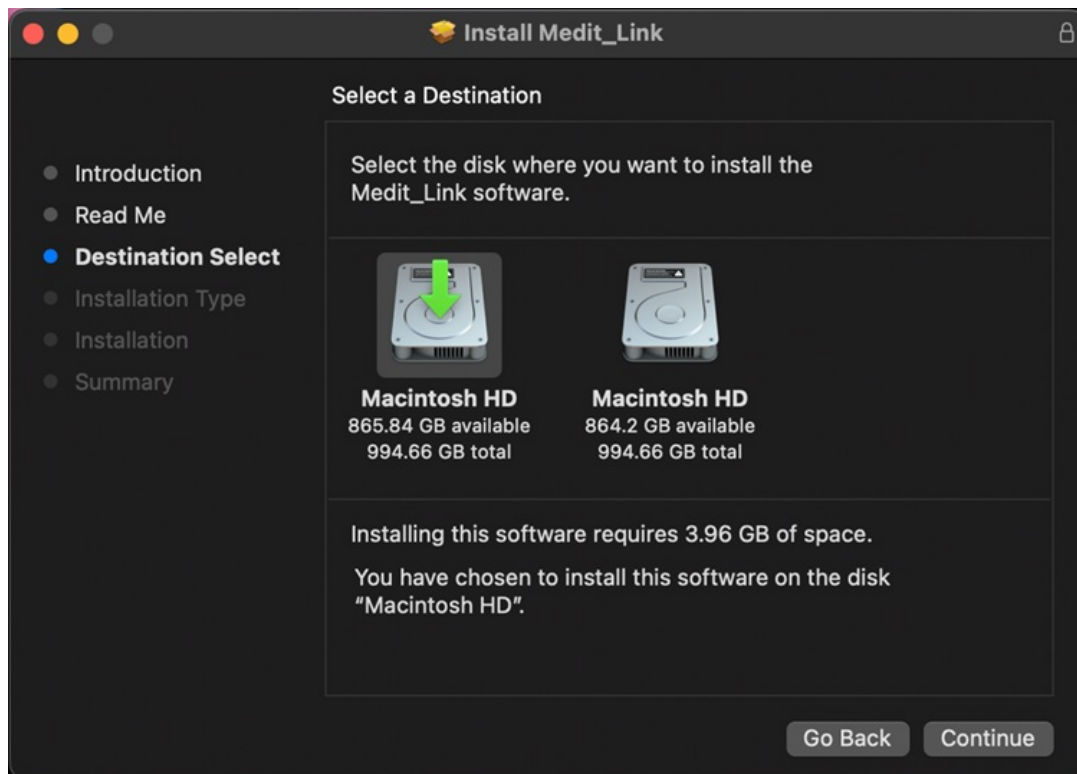


4. Klicka på "Ändra installationsplats..." för att ändra platsen för installationen.

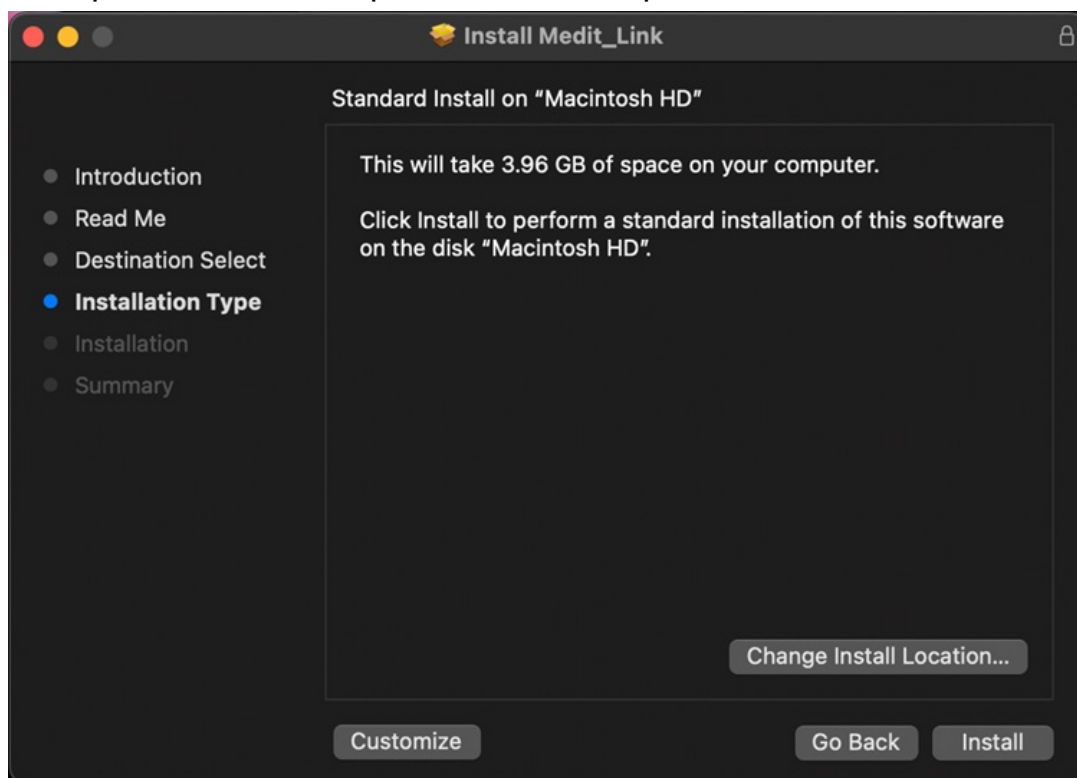


5. Klicka på "Installera" och skriv in ditt Mac-lösenord för att tillåta installation om detta krävs.



6. Vänta tills installationen är klar.

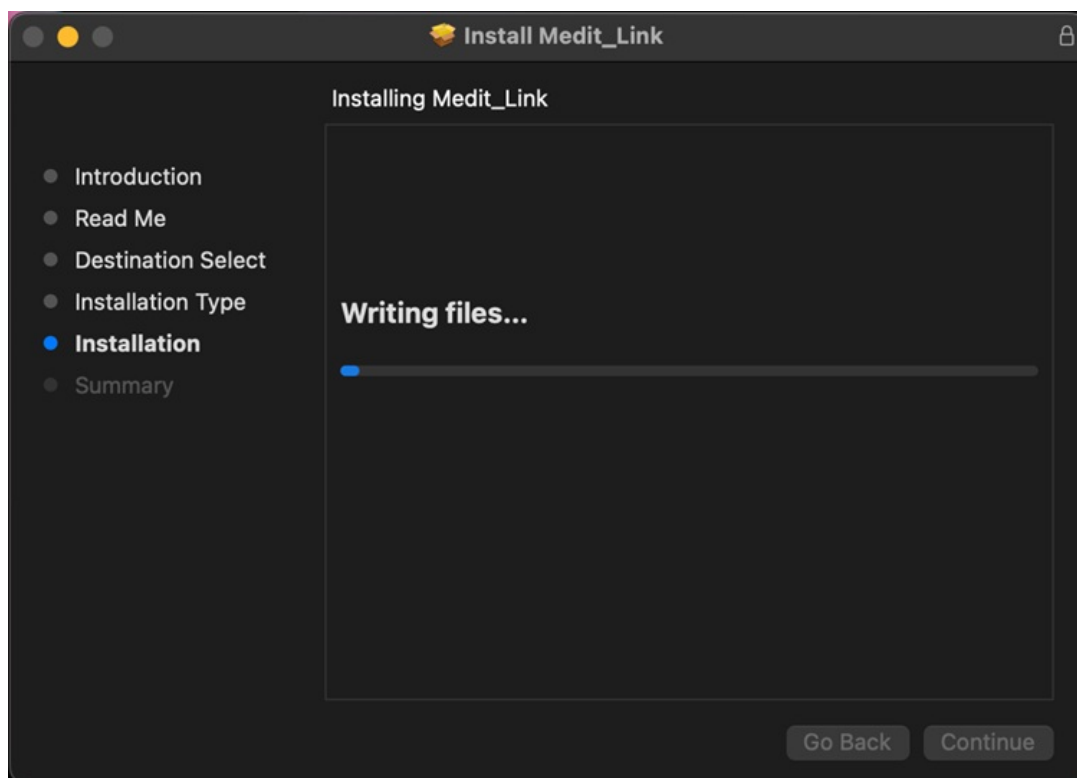

7. Klicka på "Stäng" för att stänga installationsfönstret.

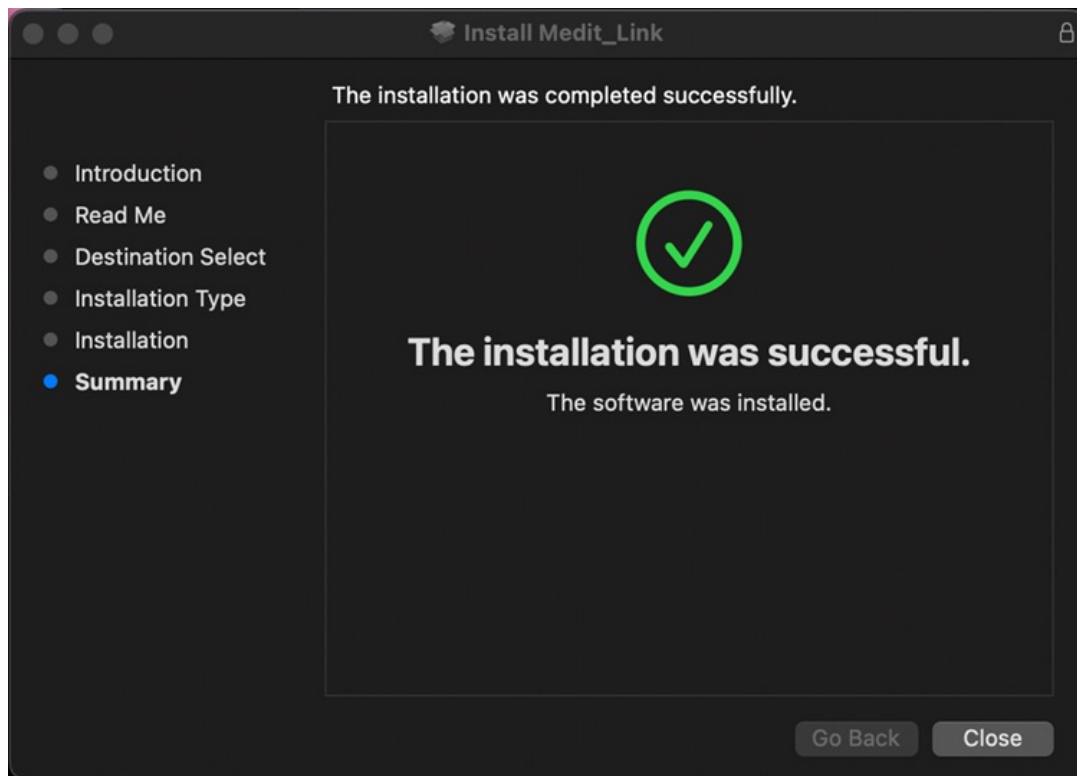

Översikt

MEDIT Link

https://stage-www.meditlink.com/casebox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세게... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열거됨?

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. wonhoon.choi

Case Box

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

View Options

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Översikt över dashboard

Du kan se statistiken för hela arbetet med Medit Link i visualiserade grafer och diagram – både i Medit Link-appen och på webben.

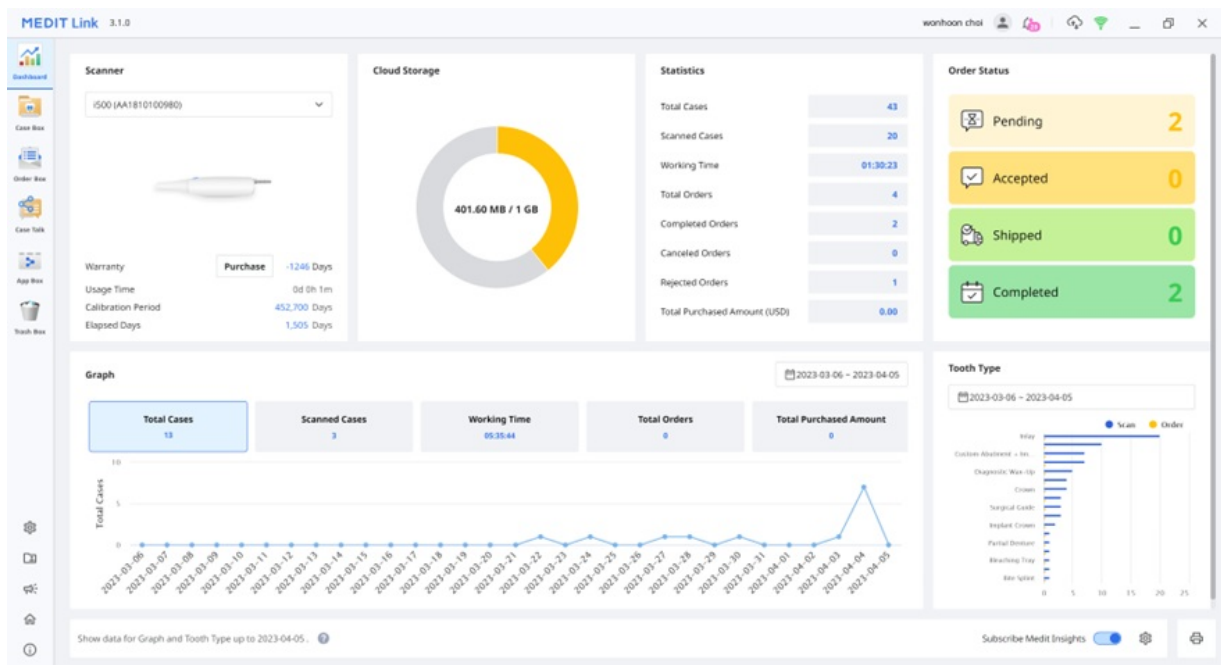

Grafer och diagram på dashboard visar statistik för allt utfört arbete i Medit Link.

Skanner	Visar information om aktiva skannrar, inklusive garanti, skannerns användningstid, kalibreringsintervall och total kalibreringstid.
Molnlagring	Visar molnets totala kapacitet och mängden som används.
Statistik	Visar fallstatistik enligt jobbstatus.
Beställningsstatus	Visar fallstatistik enligt beställningsstatus.
Graf	Graf över jobbinformation per period.
Tandtyp	Visar statistik över antalet skanningar och beställningar enligt behandlingsinformation.


Medit Insights

Medit Insights är en rapporttjänst som hjälper dig att analysera din användningsstatistik.

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Medit Insights

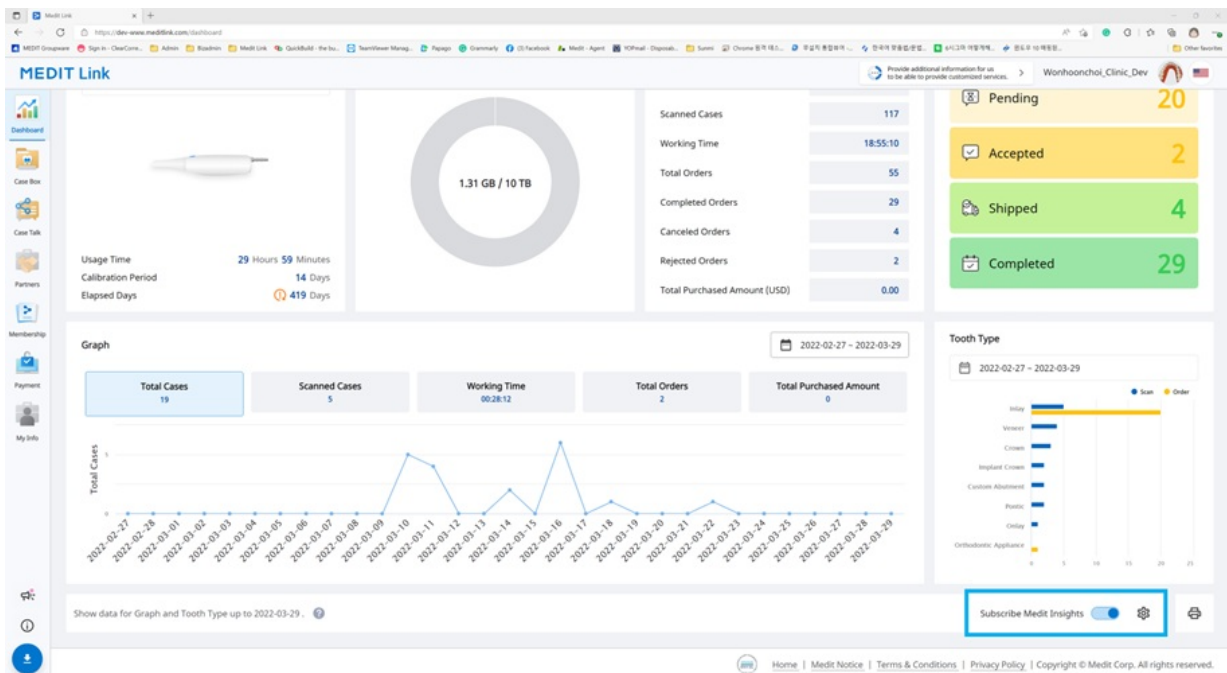

Prenumerera på Medit Insights

Du kan få en rapport via e-post den andra dagen i varje månad. Ingen ytterligare registreringsprocess krävs. Aktivera bara "Prenumerera på Medit Insights".

Om du inte använder e-postadressen du använt för Medit Link-kontot kan du registrera en annan e-postadress för att ta emot Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Den andra i varje månad får du ett e-postmeddelande med statistik enligt nedan.

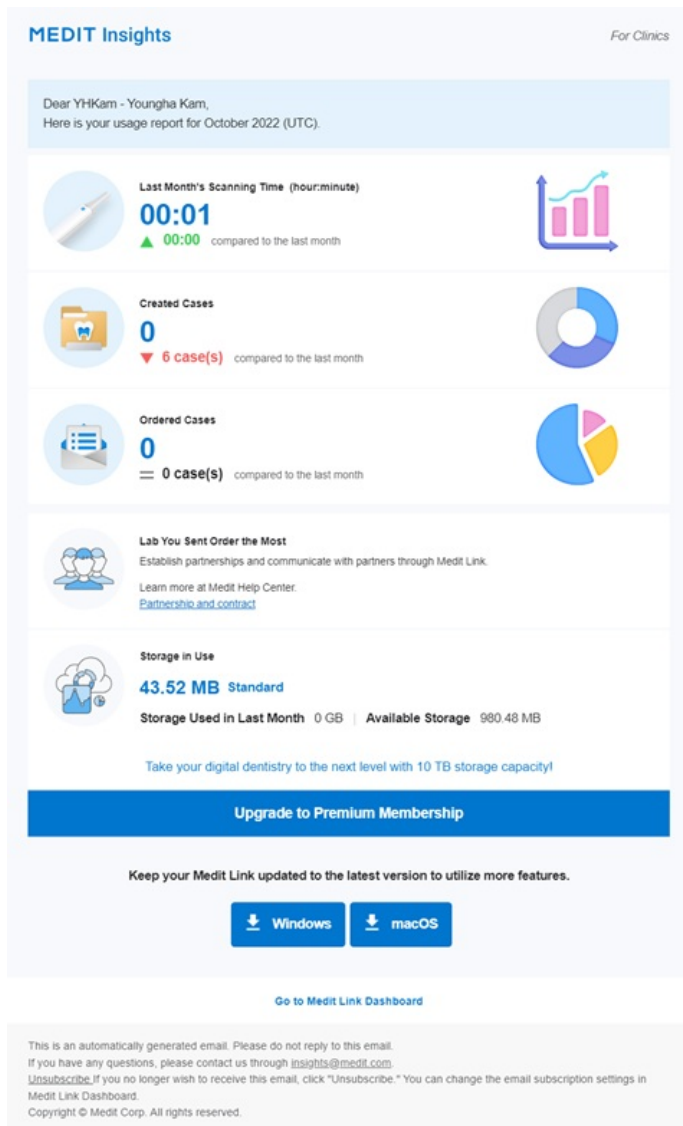


Banner	Medit ger användbara tips och information här. * Om du inte vill se bannern, avmarkera kryssrutan Marknadsföring och kampanjavtal i Min information > Mitt konto.
Statistikinformation	Statistikinformationen visas, såsom skanningstid, skapade fall, mest beställda labb etc.
Ladda ner Medit Link	Klicka på knappen för en nedladdningslänk för Medit Link.
Dashboard	All statistisk information baseras på informationen i din Dashboard. Du kan se fler detaljer i Dashboard.

Avsluta prenumerationen på Medit Insights

Inaktivera "Prenumerera på Medit Insights" i Dashboard eller klicka på "Avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet du fått.

Case Box/Work Box


Case Box (Klinik) eller Work Box (Labb) visar alla fall som användaren har skapat i Medit Link-applikationen. Du kan visa filer i en webbläsare utan att installera ett separat program.

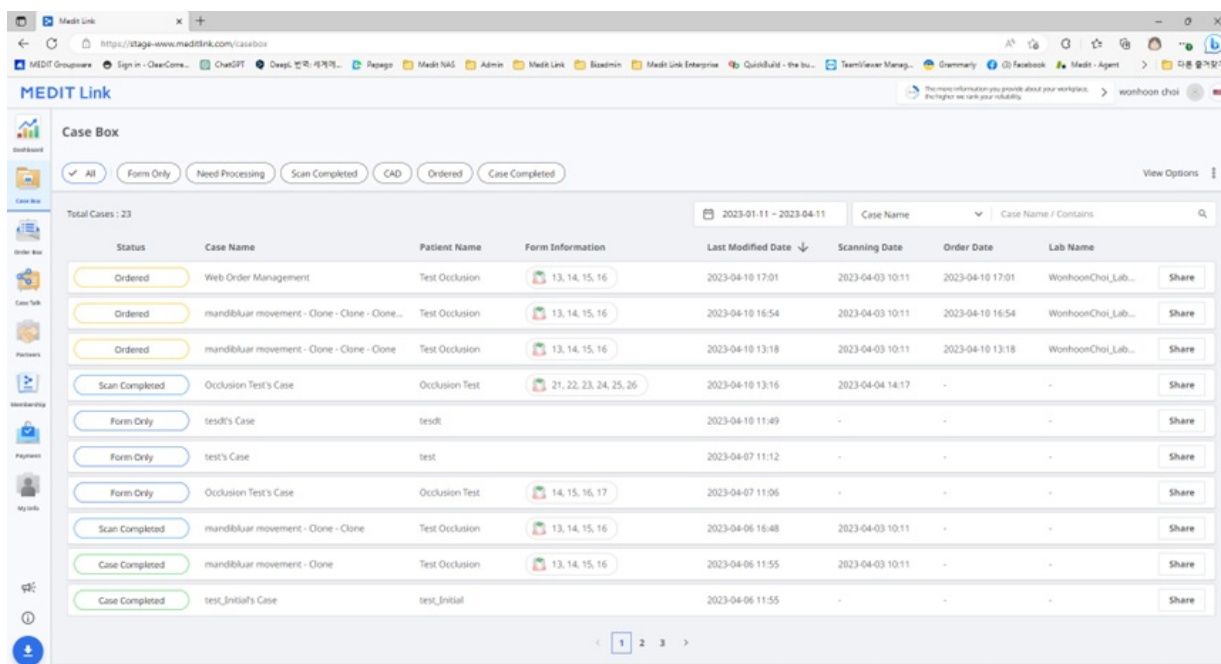

Fallfiltrering

Filtrering enligt status

Du kan filtrera fall enligt status.

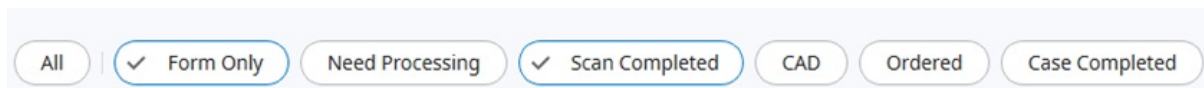

- Klicka på den status du vill se. Webbläsaren visar endast fall i den valda statusen.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

Följande statustyp tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Labb)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Filtrera enligt tidslängd

Du kan filtrera och visa fall som senast ändrats inom den period du anger.

1. Klicka på filtret för tidslängd.



2. Välj intervall.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som ändrats inom perioden.
- Idag: Visa fall senast ändrade idag.
- Igår: Visa fall senast ändrade med gårdagens datum.
- Senaste 7 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna, exklusive idag.
- Senaste 90 dagarna: Visa fall som senast ändrats under de senaste 90 dagarna, exklusive idag.
- Denna månad: Visa fall från denna månad.
- Föregående månad: Visa fall från föregående månad.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Filtrering enligt sökning

Du kan anpassa sökfunktionerna för att enkelt och snabbt söka efter den information som du behöver.


Case Name

Case Name / Contains

Sökalternativ baserat på klinik/labbkonto:

Case Box (Klinik)	Fallets namn, patientnamn, patient-ID, labbnamn
Work Box (Labb)	Fallets namn, patientnamn, kliniknamn, beställnings-ID

Falldetaljer

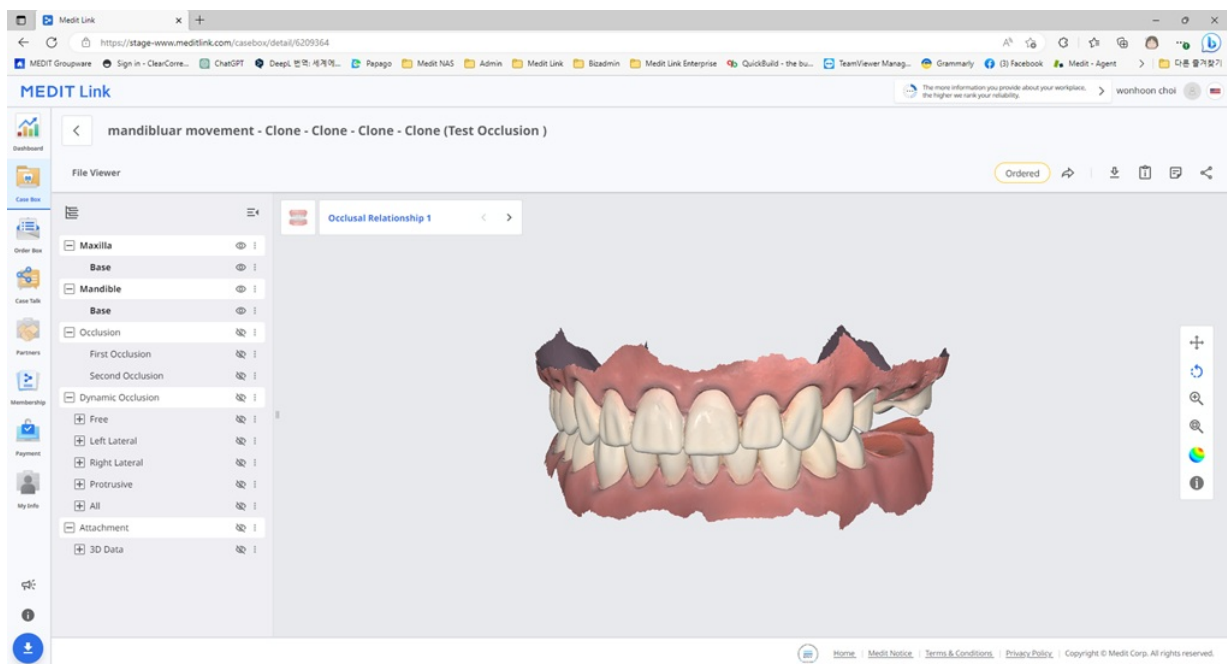

Följande fallhanteringsverktyg finns i Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till detalj	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Ladda ner	Ladda ner filer i fallet till datorn.
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari utan att behöva installera ytterligare program. Du kan dela länken fritt med vem som helst eller endast med specifika personer. En PIN-kod eller ett utgångsdatum för en länk kan ställas in för att skydda privat information.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) eller In Box (Labb) visar beställda fall i Medit Link-applikationen.

Beställningsuppgifter

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top bar includes a search field with 'test (test)' and a user profile 'wonhoon choi'. The sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Order, File Viewer, Case Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area is divided into two sections: Order Box (left) and Order List (right). The Order Box contains fields for Order ID (5995726), Patient Name (test), Partner Name (WonhoonChoi_Lab_Stage), Scanning Date (2023-04-05), Order Date (2023-03-28 AM 08:34), Requested Delivery Date (2023-04-05), Expected Delivery Date (2023-04-05), Memo, and Tags. The Order List is a table with columns: No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The table lists 8 items, all with a price of 0.00. A 'Total' row at the bottom shows 'USD 0.00'.

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande).
3	Visa tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning
4	Visa funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc.
5	Visar detaljerad information om beställningar, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och anteckningar & taggar.
6	Visa informationen om den beställda produkten och leveransstatus.


Tabbar i Order Box/In Box

Beställning	Filvisning
Visar detaljerad information om beställningen, såsom order-ID, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade och bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer som du anger, med vem som helst med den delade länken eller med registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista med alla delade fall i "Case Talk" i Medit Link-appen och på Medit Links webbsida.

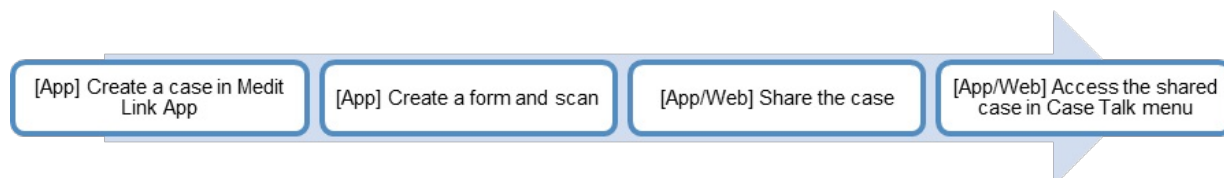

Man kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.


Skapa en Case Talk

Du kan skapa en delad länk till ett fall skapat i Case Box/Work Box.

1. Hitta ett fall du vill dela och klicka på knappen "Dela" till höger.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	Share
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial	-	2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Välj de filer som du vill dela.

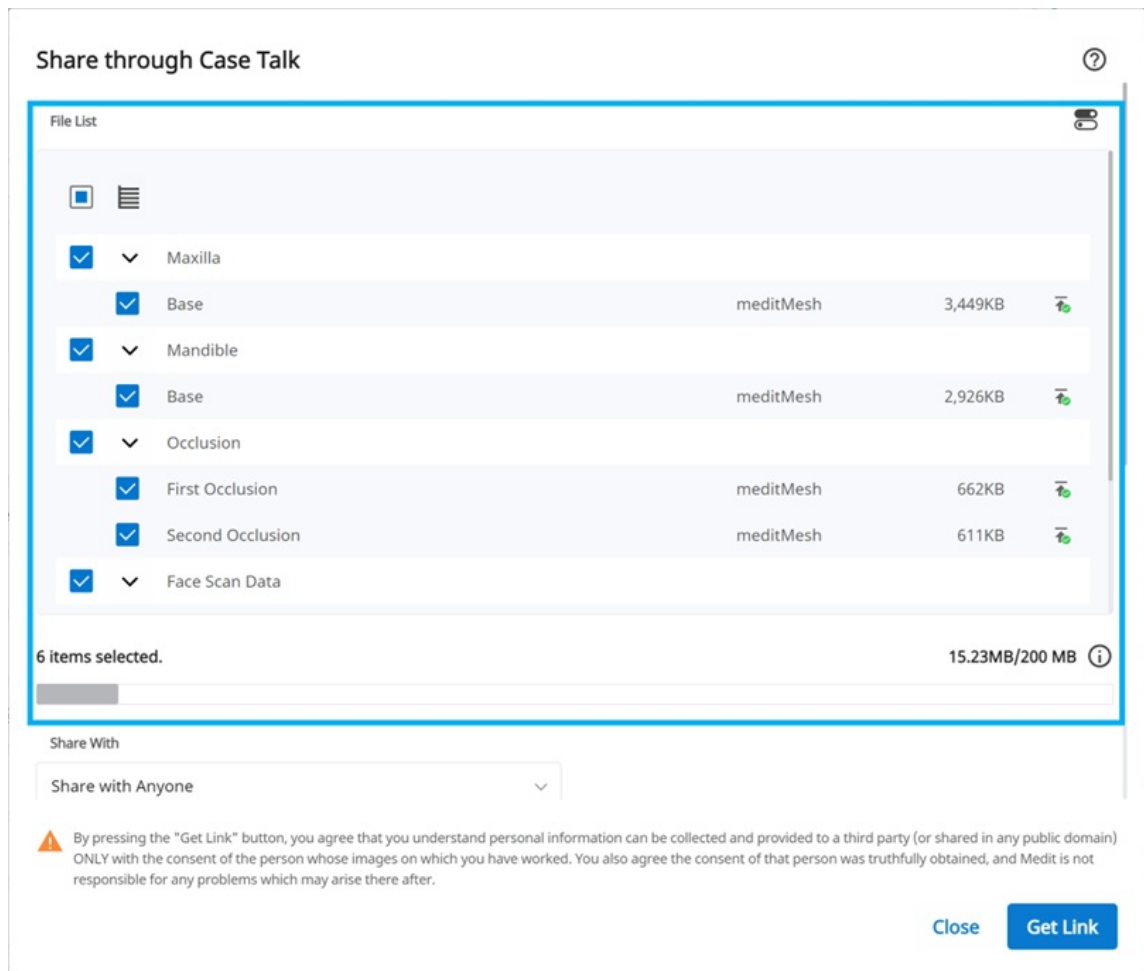


3. Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ.
4. Klicka på "Hämta länk" för att skapa en delad länk.

Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ

Dela med	• Dela med alla Skapar en delad länk. Du kan dela filerna med vem som helst. • Dela med specifika personer Skapar och skickar en delad länk till specifika personer.
Dela via	Om du väljer "Dela med specifika personer" kan du dela länken med specifika personer på olika sätt. • Mejladress • SMS • Partners
Utgångsdatum	Ställ in utgångsdatum för länken. När länken har upphört att gälla kommer personerna som du delat länken med inte längre kunna använda den. Du kan utöka perioden upp till 90 dagar från idag.
PIN-kod	Ställ in en 6-siffrig åtkomstkod för att säkerställa datasäkerhet.
Dela patientens namn	Om du markerar det här alternativet kommer alla personer som är anslutna via länken att kunna se patientens namn.
Ge tillstånd för nedladdning	Om du markerar det här alternativet kan alla användare som har tillgång till den delade länken ladda ner filerna.
Tillåt kommentarer	• Om du klickar i detta alternativ kommer du kunna kommunicera genom den delade länken. • Om du avmarkerar alternativet kan mottagaren endast se dina kommentarer, men kommer inte att kunna lägga till sina egna.
Kommentar	Du kan lämna ett meddelande i kommentarsfältet.

Case Talk-detaljer

Du kan se filer i det delade fallet. Följande funktioner är tillgängliga på informationssidan för Case Talk.

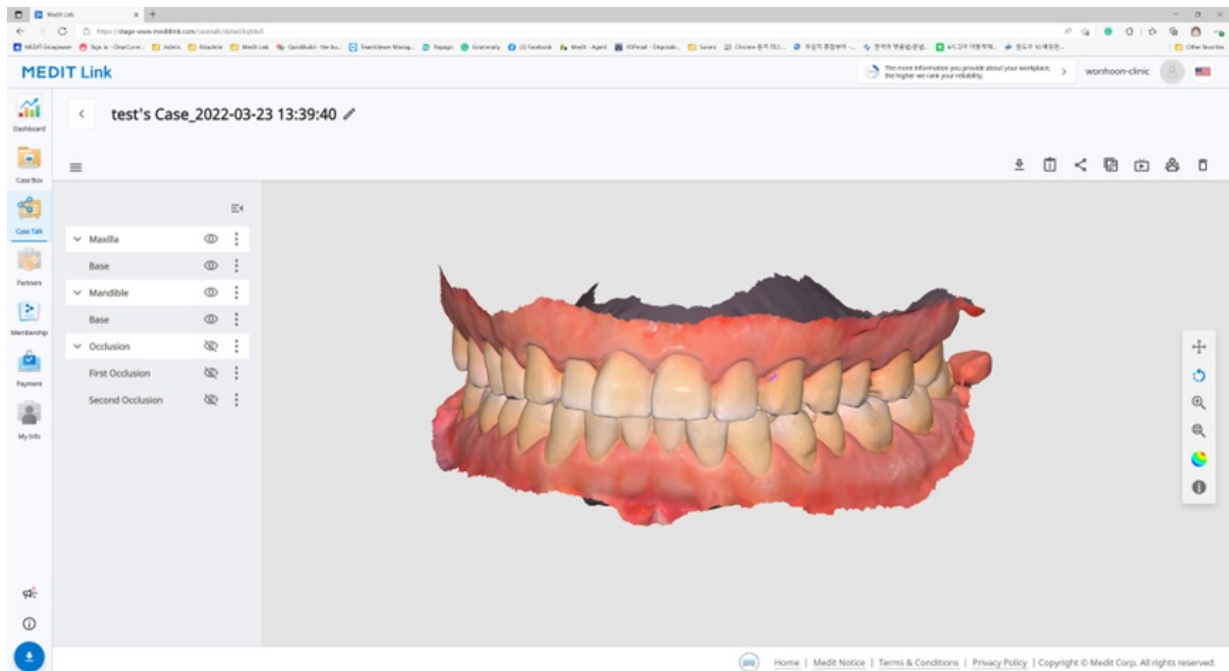

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till den lokala datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	Kopiera länk	Kopiera den delade länken till urklipp. Den kopierade länken visar de delade filerna i din webbläsare.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som använder den delade länken.
	Radera	Radera den delade länken. Den borttagna delade länken är inte längre tillgänglig.

!Not


Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Web Viewer

Du kan se delad data i Case Talk i en webbläsare.

Du kan kommunicera med de personer som har tillgång till länken med anteckningar och kommentarer.

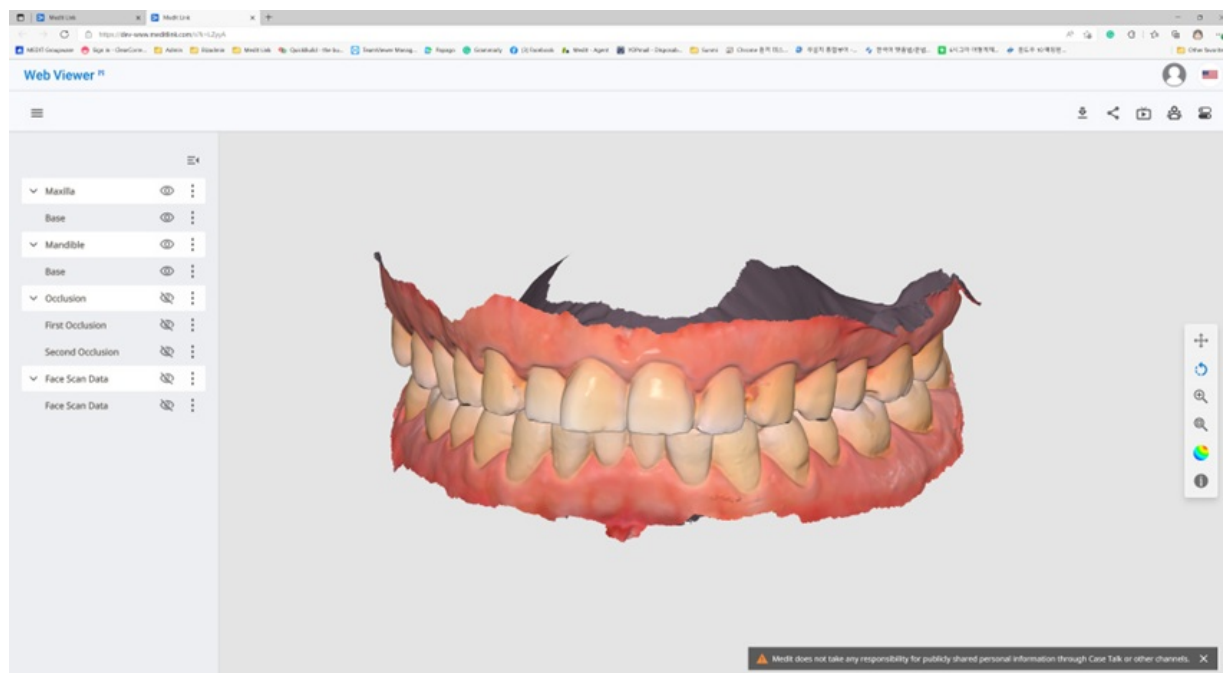

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som är anslutna till den delade länken.
	Tandmarkering	Byt tandmarkeringssystem.


INot

Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Anteckning

Du kan lägga till anteckningar på en angiven plats på 3D-modellen. Alla med länken kan se de kommentarer som du lägger till.

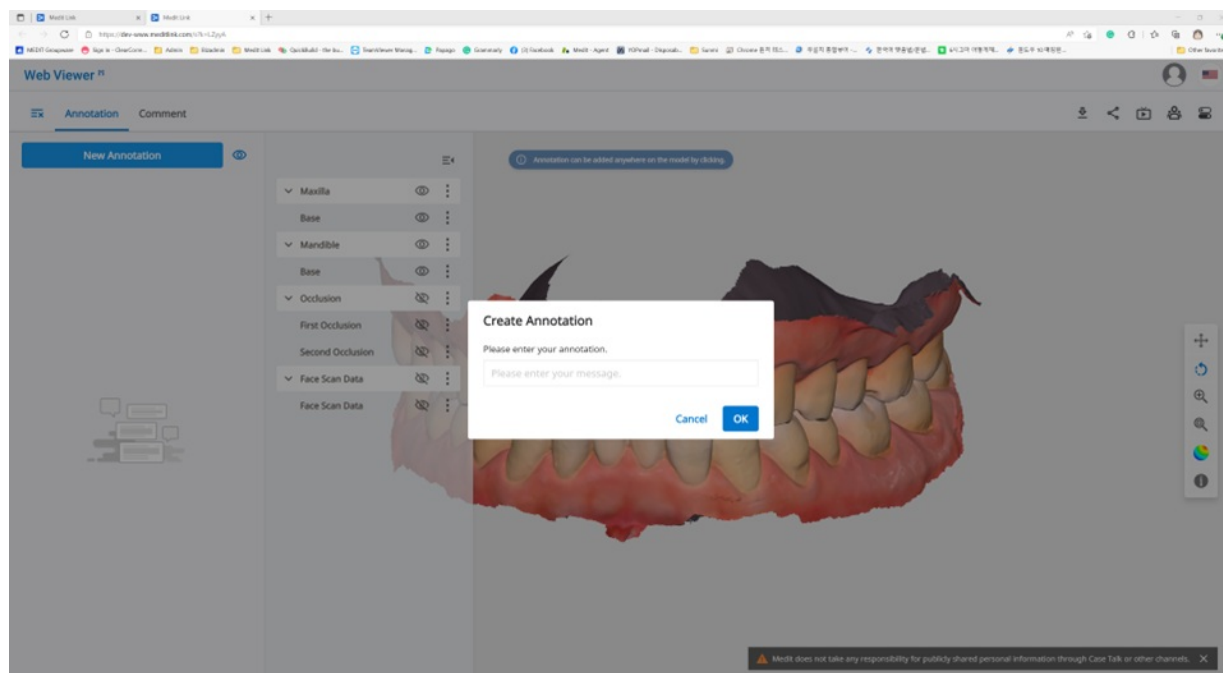

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Anteckning

1. Hitta menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj fliken "Anteckning". Använd knappen "Ny anteckning" för att lägga till en anteckning var som helst på datan med ett klick.
2. Skriv meddelandet och klicka sedan på "OK" för att spara det.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. Du kan använda kommentarer som en enkel kommunikationskanal. Klicka på den skapade anteckningen för att skriva ett svar och tryck på "Skicka".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply
Send

Kommentarer

Du kan kommunicera med användare som har tillgång till länken via fliken "Kommentar" i Web Viewer-menyn.

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- [Kommentar](#)

Skärmdelning i realtid


Du kan dela din skärm i realtid.

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- [Live](#)

1. Klicka på "Live" för att dela din Web Viewer-skärm med anslutna användare.

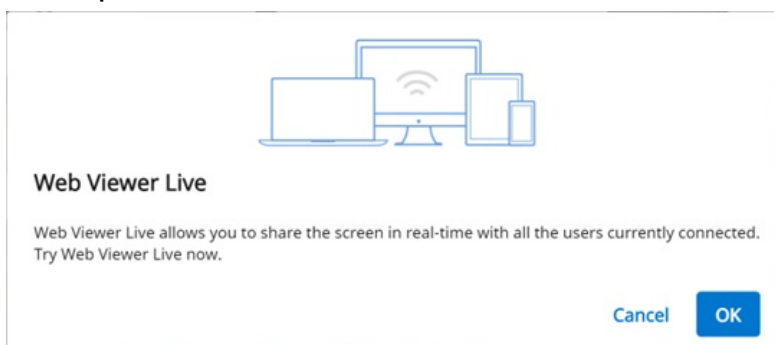


2. Klicka på "OK" för att börja dela din skärm.
3. Andra personer som är anslutna via länken kan acceptera skärmdelningen.
4. Skärmen för användaren som begärt skärmdelning synkroniseras med skärmen för personen som tagit emot begäran.

Dataträd





All data grupperas och visas enligt attribut i dataträdet. Du kan visa eller dölja data, justera opacitet m.m.

Kontroller för dataträd

Visa/dölj	Klicka på "ögon"-ikonen för att visa eller dölja data i vyn. Kontrollera datasynlighet som en grupp eller enskild fil.
Opacitet	Håll musen över ett synligt element för att se skjutreglaget för opacitet. Justera reglaget för att ändra transparensen på dina data. 

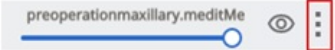Utökad meny	Den utökade menyn visas på höger sida av varje element i dataträdet. Den innehåller följande alternativ:  • Visa endast detta: Dölj alla andra data förutom aktuella data. • Dölj: Dölj aktuella data. • Duplicera: Klon data i det aktuella fallet. • Exportera: Spara data till en lokal dator. • Radera: Radera aktuella data eller aktuell datagrupp.
-------------	---

3D-modellkontroll

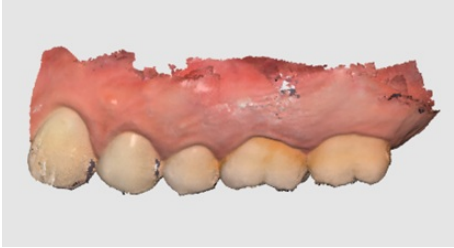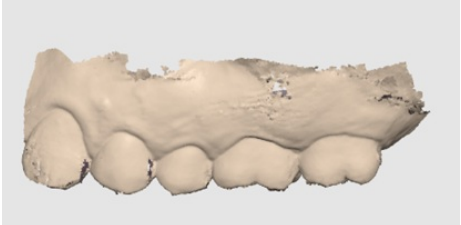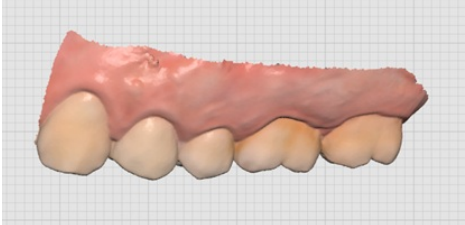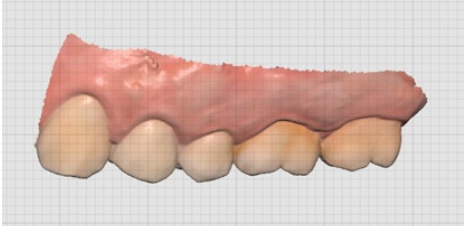	Panorera	Flytta modellen.
	Roterar	Roterar modellen.
	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.
	Modellvisningsläge	Textur på Visa data i verkliga texturfärger. 
		Textur av Visa data i en enda färg. 
	Rutnätsinställningar (mm)	Rutnät på Visar rutnätet i bakgrunden. 
		Lager på Lägg rutnätet över modellen. 
		Rutnät av Göm rutnätet.

Partners

Du kan söka efter potentiella partners för att begära ett partnerskap och se listan över nuvarande partners och partners med kontrakt.


iNot

Tjänster som använder Google Maps finns inte tillgängliga för Medit Link China.

Sök efter partners

Du kan söka efter Medit Link-användare utifrån deras företagsnamn och/eller adress.

I sökresultaten kan du skicka en partnerskapsförfrågan till en organisation du skulle vilja arbeta med.

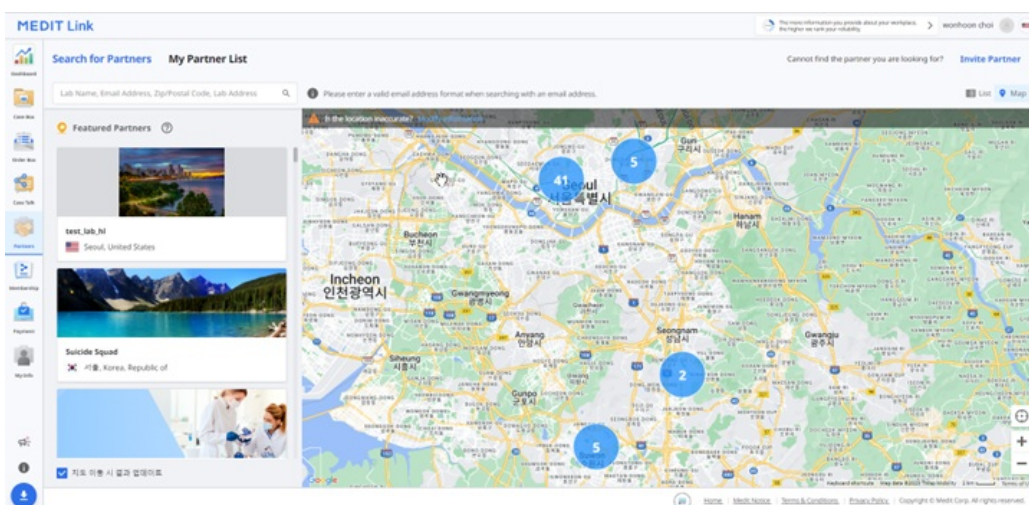


Min partnerlista

Du kan granska dina nuvarande partnerskap och kontrakt med alla dina befintliga partnerföretag i Min partnerlista.

Hur skiljer sig ett kontrakt från ett partnerskap?

När du samarbetar med ett företag kan du begära att få skapa ett kontrakt med den organisationen.

- Om din partner accepterar din avtalsförfrågan kan du betala för lagda beställningar.

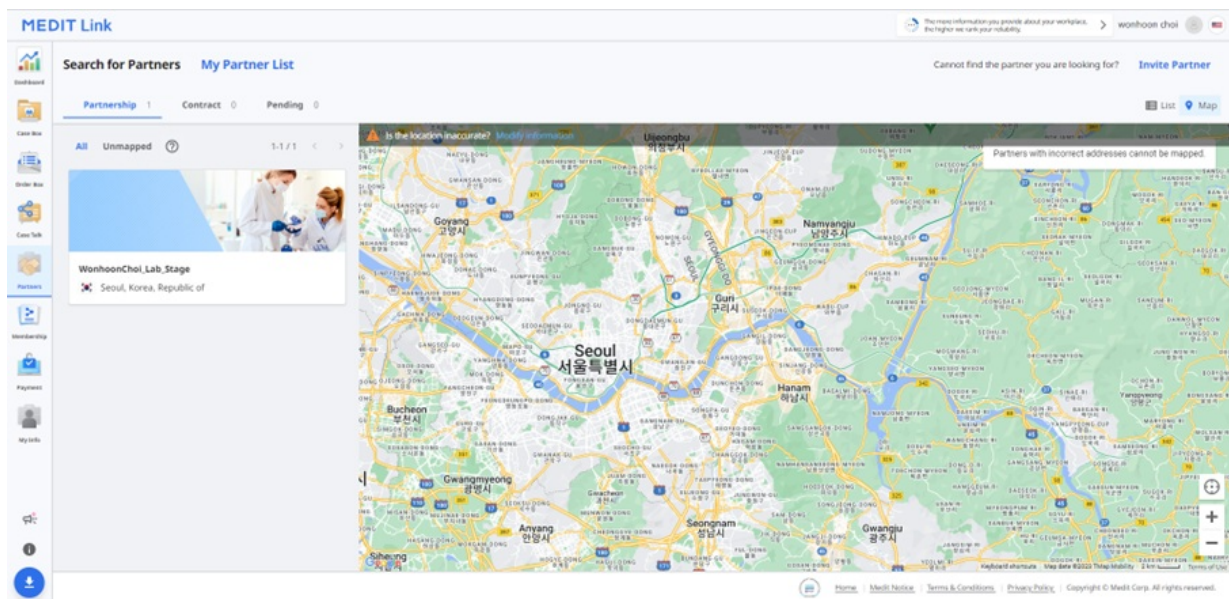

iNot

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Kontrakt

Partnerinbjudan

Om det finns en organisation du skulle vilja arbeta med kan du bjuda in dem att registrera sig hos Medit Link. Partnerskapet bildas automatiskt när de accepterar inbjudan.

1. Klicka på "Bjud in partner" längst upp till vänster på skärmen.
2. Ange e-postadressen till den leverantör du vill arbeta med och skicka en inbjudan med en partnerskapsförfrågan.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. När den inbjudna organisationen accepterar inbjudan och registrerar sig för Medit Link kommer partnerskapet att upprättas automatiskt.

Medlemskap

Medit Links medlemspolicy syftar till att etablera en mer omfattande digital miljö, som successivt expanderar till att tillhandahålla olika tjänster baserade på molnplattformen.

Vi strävar efter att ge våra kunder en mer konsekvent och personlig upplevelse med vår nya medlemspolicy.

Det finns två medlemskapsplaner tillgängliga:

Standard

- Gratis standardplan för alla registrerade användare
- 1 GB molnlagring
- För nya användare

Premium

- Betalplan
- 10 GB molnlagring
- För användare med många fall och olika data
- En månads gratis provperiod

	Standard	Premium
Molnlagring	1 GB	10 TB
Månadsavgift	Gratis	0,99 USD/månad
* I molnlagringen inräknas inte utrymmet som tas upp av rådata.		

iNot

Medlemskapsplanerna finns tillgängliga för Medit Link China. Du kan ta del av premiumplanen gratis fram till funktionens officiella release.

Medlemskap

The screenshot displays the Medit Link web application. The main content area is titled 'My Plan' and shows the 'Standard' plan, which is 'Free'. It lists three benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a progress bar indicating 353.21 MB used out of 1 GB available. Below the progress bar, there are two sections: 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB), each with a checkbox and a description. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with user information.

Min plan

I avsnittet till vänster kan du se vilken medlemsplan du har för närvarande. Här kan du också när som helst ändra status på din medlemsprenumeration.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)


Molnlagring

I avsnittet till höger kan du hantera din molnlagring.

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)

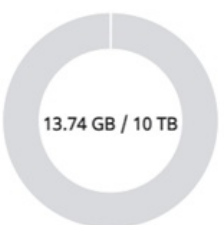

13.74 GB / 10 TB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐  Raw Data

Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

147.52 GB

☐  Result Files & Attachments

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

13.74 GB

Ställ in period

Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden.

- Alla: Se alla filer.
- 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan.
- 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan.
- 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan.
- 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.


Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i diagrammet. Men du kan hantera rådata härifrån om det behövs, t.ex. radera den för att skydda patientens privata information etc.
Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra utrymme.

Prenumerera


Om du för närvarande har Standardplanen eller Premiumplanen med en inlösenkod kan du prenumerera på Premiummedlemskapet.

Betalningen gör du via Stripe-tjänsten (www.stripe.com).

1. Klicka på knappen "Prenumerera".

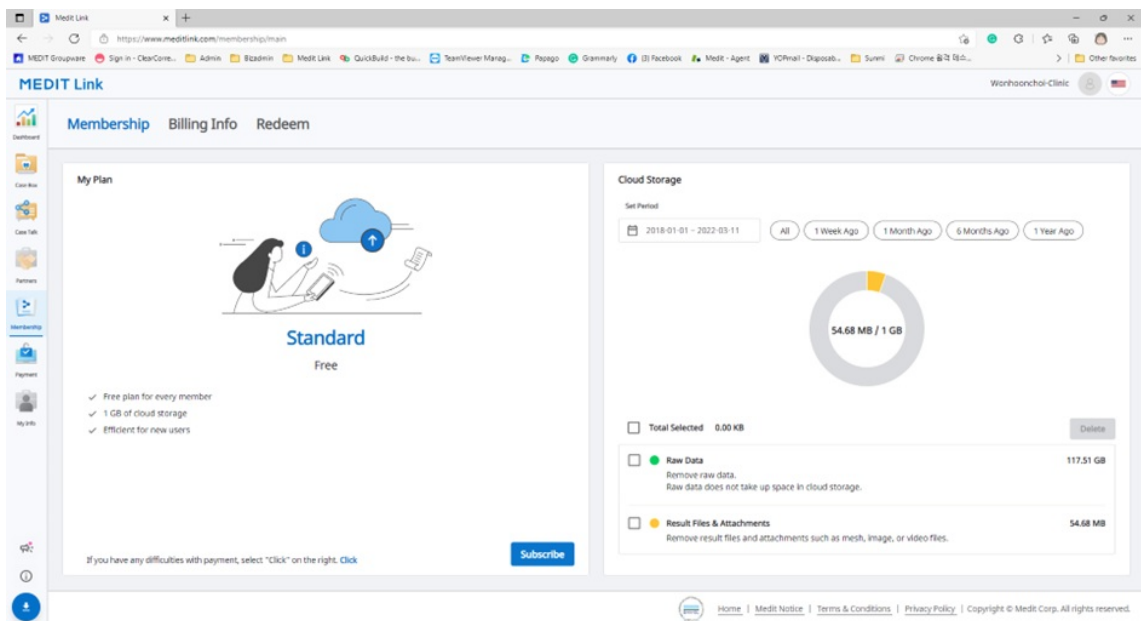


2. Markera Premium-planen och klicka på "Prenumerera" igen.

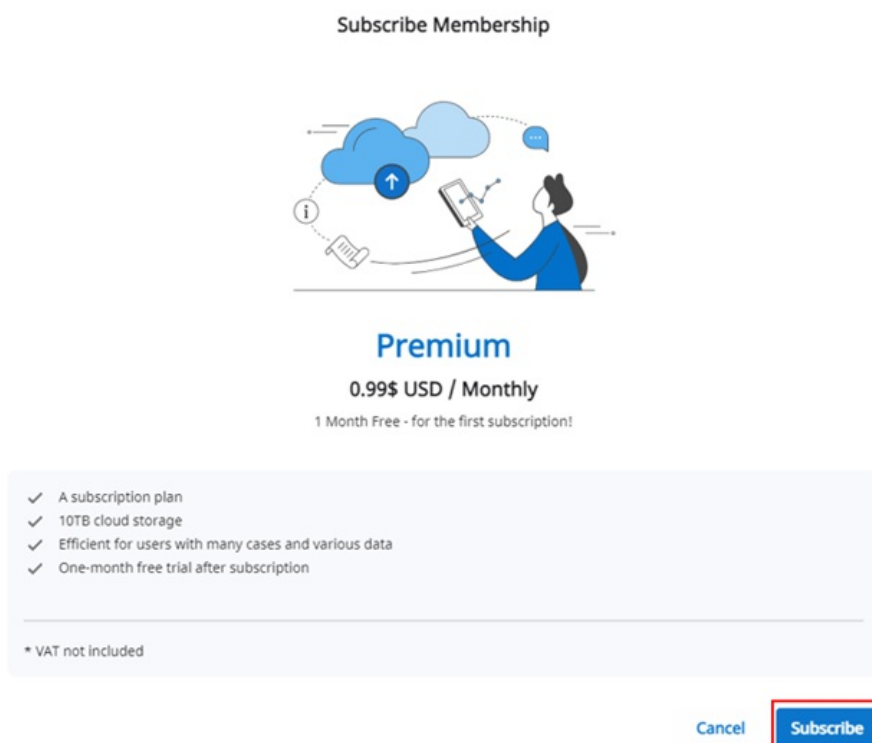

3. Kontrollera pris och villkor och ange nödvändiga uppgifter för betalningen. Klicka sedan på "Prenumerera".


4. Betalningen tar några sekunder. När du är klar ser du ett bekräftelsemeddelande.

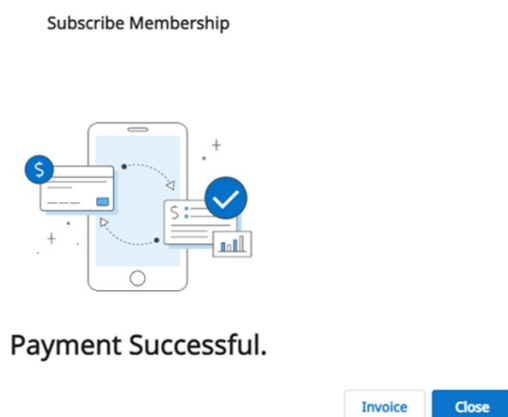


Avsluta prenumerationen

Du kan avsluta medlemskapet när du vill. När du avbrutit kan du fortfarande använda dig av Premiummedlemskapet under de återstående dagarna. Planen kommer att ändras till Standard från och med nästkommande betalningsdag, och molnlagringen kommer att begränsas till 1 GB. Om molnlagringskapaciteten överskrids kommer filerna inte att säkerhetskopieras och beställnings- och delningsfunktionerna kommer inte att vara tillgängliga.

1. Klicka på "Avsluta prenumerationen".

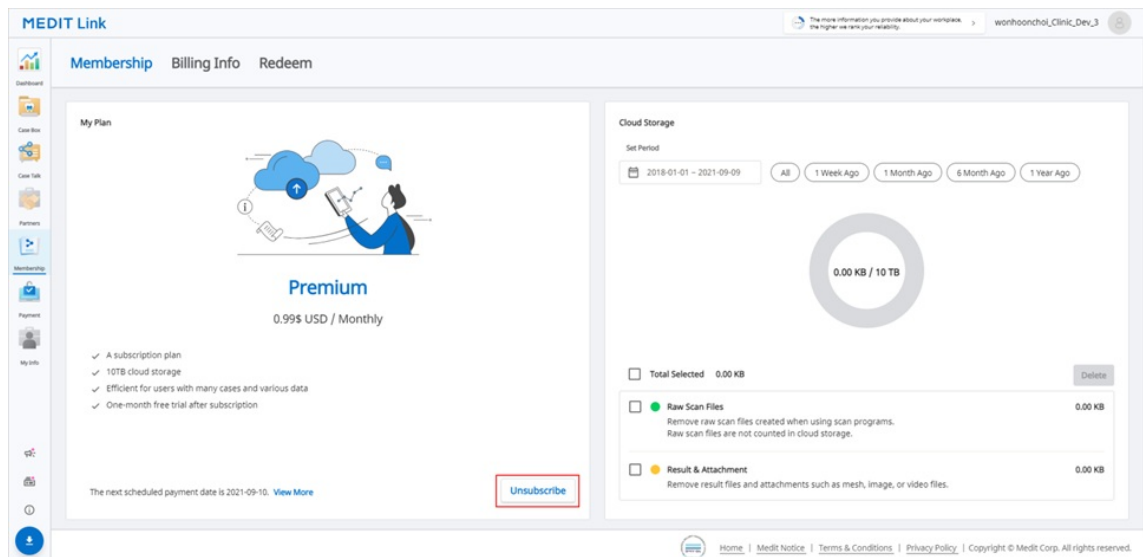

2. Klicka på "Avbryt prenumeration".

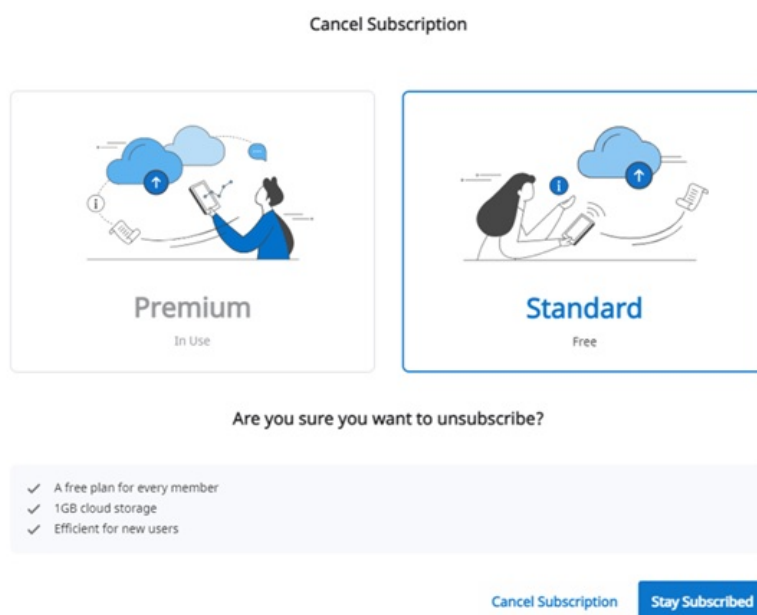

3. För att bekräfta att du vill avsluta prenumerationen, klicka på "Avbryt prenumeration" igen i det nya popup-fönstret.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Prenumerationen har avbrutits.
5. Planen kommer att ändras till Standard från och med nästkommande betalningsdag, och molnlagringen kommer att begränsas till 1 GB. Om molnlagringskapaciteten överskrids kommer filerna inte att säkerhetskopieras och beställnings- och delningsfunktionerna kommer inte att vara tillgängliga.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Faktureringsinformation

Du kan kontrollera betalningshistoriken för medlemsprenumerationer, inklusive fakturan för varje betalning. Du kan också lägga till eller ändra betalningsmetoden, som kommer att tillämpas från och med nästa schemalagda betalning.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Case Box, Case Task, Partners, Membership (active), Payment, and My Info. The main content area is titled 'My Plan and Billing Information' and includes the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

The bottom of the page features a footer with links: Home, Medit Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Så lägger du till en betalningsmetod

1. Klicka på "Redigera betalningsmetod".

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangular box to indicate the next step in the process.

2. Klicka på "Lägg till betalningsmetod".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Ange efterfrågade uppgifter och klicka på "Lägg till".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. Den nytilagda betalningsmetoden kommer att ställas in som standard och användas för nästa betalning.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Så ändra du betalningsmetod

1. Klicka på ikonen för utökad meny bredvid den betalningsmetod du vill ändra i faktureringsdialogrutan.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Klicka på "Ange som standard" för att ange det valda kortet som standardbetalningsmetod.

The screenshot shows a 'Billing' page with three main sections: 'CURRENT PLANS', 'PAYMENT METHODS', and 'BILLING INFORMATION'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. Below the cards is a '+ Add payment method' link. A red box highlights a menu with 'Make default' and 'Delete' options. The 'BILLING INFORMATION' section is partially visible at the bottom.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Utnyttja

Registrera inlösenkoden som tillhandahålls som en del av kampanjen. Du kan använda Premiummedlemskap med inlösenkod.

Registrera inlösenkod

1. Ange inlösenkod och klicka på "Registrera".

2. Läs meddelandet och välj "Registrera" eller "Tillämpa" i popup-rutan.
 - **Registrera:** Registrera inlösenkoden. Du kan aktivera och använda inlösenkoden senare efter registrering.
 - **Tillämpa:** Registrera och aktivera inlösenkoden. Kampanjrabatten gäller direkt.

Aktivera inlösenkod

Du kan registrera flera inlösenkoder, men du måste aktivera den du vill använda.

1. Klicka på knappen "Aktivera" bredvid koden du vill använda.
Om det inte finns någon kod med statusen "Aktiv" kommer den du väljer att tillämpas omedelbart. Om någon kod redan är aktiverad kommer statusen på den att ändras till "Väntar" och den du valt kommer att användas istället. När den aktuella lösenkoden går ut kommer den väntande koden automatiskt att återaktiveras.
2. **iNot**
Endast en kod kan vara i status "Väntar".

Medit Link

[Sign in - ClearCore...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome](#)
[유심지](#)
[유심지](#)

MEDIT Link

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Betalning

iNot


Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Betalning

Betalningsuppgifter (Klinik & labbkonton)

Du kan kontrollera betalnings- och transaktionshistoriken mellan dig och dina partners via sidan Betalningsuppgifter.

Betalkontoinformation (endast labbkonto)

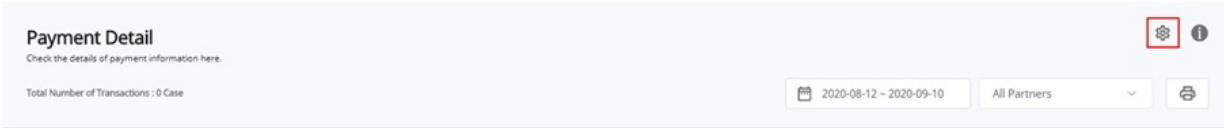

Den här funktionen är endast tillgänglig för labbadministratörens konto där denna kan ange information för att få betalt av dina partners.

- Du måste ange din betalkontoinformation för att dina partners ska kunna göra beställningar via onlinebetalningssystemet.

iNot

Om du väljer ett land där Stripe stöds kan du klicka på en knapp för att dirigeras till Stripe där du kan registrera dig för Stripe.

Där kan du välja Sydkorea, sedan kan du ange ett lokalt bankkontonummer för betalningsmottagande. KCP kommer att behandla din betalning.

Min information

Mitt konto

Här kan du granska och redigera informationen du angett vid registreringen och kontrollera din medlemsstatus.

The screenshot shows the 'My Account' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. The 'Account Information' section includes a profile picture placeholder, an email address field with 'coldgreentea@naver.com' and a 'Change Email Address' button, a password field with a 'Change Password' button, a name field with 'wonhoonchoi_Lab3', and language and country dropdown menus. The language is set to '한국어 (대한민국)' and the country is 'Korea, Republic of'. A note states: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.' Below this is the 'Subscription Information' section with a 'Subscribe' button and the word 'Standard'. The 'Organization Information' section has an 'Edit Information' button and shows the organization name 'wonhoonchoi_Lab3'.

Min organisation (endast administratörskonto)

Här kan du granska och redigera informationen om din organisation. Det här avsnittet är endast tillgängligt för konton av administratörstyp.

The screenshot shows the 'My Organization' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. Below the navigation bar are three tabs: 'Address Information' (selected), 'Organization Information', and 'Additional Information'. The 'Address Information (Mandatory) *' section includes fields for 'Address 1 *' (23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea) with a 'View Location on Map' button, 'Address 2' (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.), 'Zip/Postal Code *' (02835), 'City *' (Seoul), 'Country *' (Korea, Republic of), 'State/Province *' (Seoul), 'Office Phone *' (+82 01026088546), and 'Mobile Phone (Optional)' (+82 01026088546). A note at the bottom states: 'If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.'

Min skanner

Här kan du se information om enheten som är ansluten till kontot.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Min prislista (Lab: endast administratörskonto)

Här kan du ange vilka produkter som ditt labb erbjuder samt prisinformation för varje produkt.

My Account My Organization My Scanner My Price List ⓘ									
Teeth Arch		AED (1:1)							
All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (0/7) Diagnostic Wax-Up (0/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)									
☐	Name	Type	Method	Material	Price				
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	\$6.03				
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03				
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03				
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03				
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03				
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00				
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00				
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00				
									Save

iNot

- När du har skapat ett kontrakt med en partner kan din partner beställa dina produkter med hjälp av din produktlista och priserna.
- Om du bara har ett partnerskap med din partner stöder Medit Link inte beställningar som kräver prisinformation.

Annan meny

Notifiera & uppdatera

Här kan du läsa viktiga meddelanden från Medit och få programuppdateringar av Medits programvara.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Information från Medit

Här får du information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, som Medit Academy, Medit Academy YouTube och Medit Help Center.

Need more help?

 **Medit Academy** >

 **YouTube** >

 **Help Center** >

Ladda ner Medit Link-appen

Du kan ladda ner den senaste versionen av installationsprogrammet från webben. Den här menyn är användbar om du förlorat installationsprogrammet som ingår i produktpaketet, eller om du har ett föråldrat installationsprogram.

47

iNot


Medit Link uppdateras automatiskt när du har en internetanslutning.



Windows

macOS

Översikt

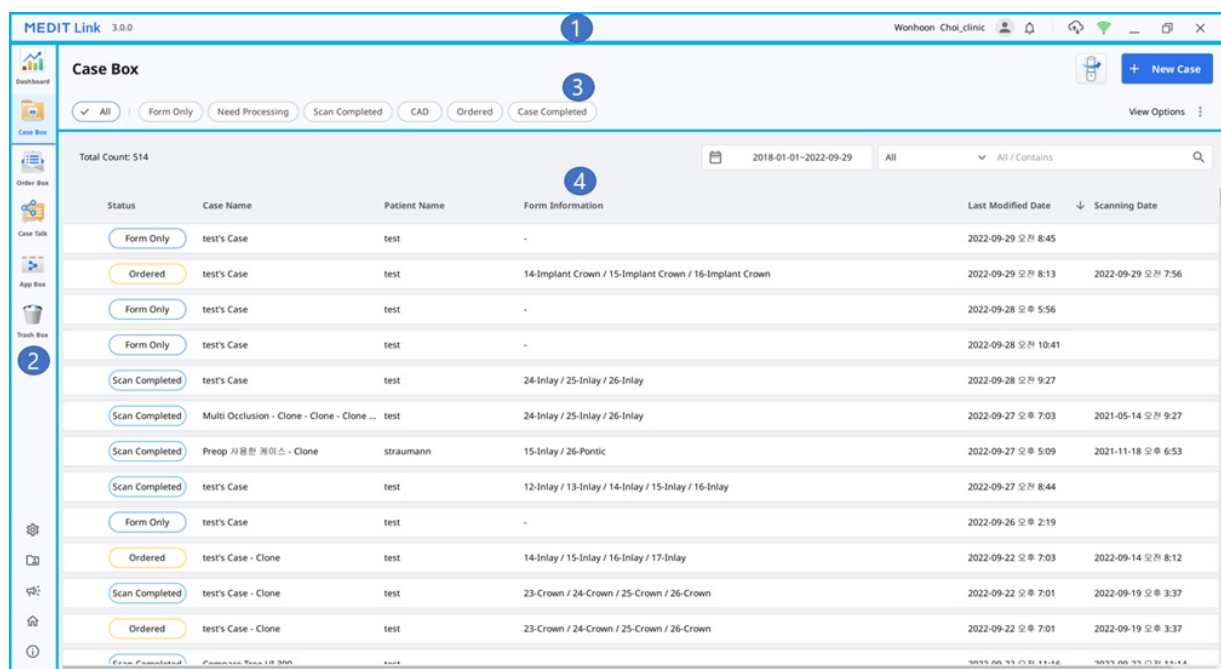

1	Titelfält	Se Medit Link-appen > Titelfält för detaljerad information.
2	Meny	Se Medit Link-appen > Meny för detaljerad information.
3	Verktyg och funktioner	Se Medit Link-appen > Filvisning och Medit Link-appen > Visa alternativ för detaljerad information.
4	Fallista	Se Medit Link-appen > Filtrering och sök för detaljerad information.

Boxöversikt

Arbetsflöde		Klinikkonto	Labbkonto
Steg 1	Skapa fall	Case Box: Skapa fall och sök och visa enkelt fallen med olika filtrerings- och sökalternativ. Du kan länka det skapade fallet direkt till skanningsprogram och CAD-program för vidare arbete.	
Steg 2	Beställ/Hantera fall	Order Box: Hantera beställda fall. Funktioner för att hantera processen från beställning till slutförande av fall tillhandahålls.	In Box: Hantera fall i mottagna beställningar. Funktioner för att hantera processen från att acceptera, avvisa och frakt till slutförande av fall tillhandahålls.
Steg 3	Jobba med skanning/CAD		Work Box: Hantera fall som har vidarebefordrats från In Box eller som du har skapat. Du kan länka det skapade fallet direkt till skanningsprogram och CAD-program för vidare arbete.


Steg 4	Dela fall	Case Talk: Dela de skapade fallen med begränsningar, utan begränsningar, med specifika personer eller andra registrerade medlemmar i Medit Link.
Steg 5	Kompletterande eller tilläggsarbete	App Box: Använd flera olika appar för att komplettera ditt digitala tandvårdsarbetsflöde. Du kan ladda ner och installera Medits eller tredjepartsappar.
Steg 6	Radera/Återställ fall	Trash Box: Visa, återställ eller permanent radera fall i Trash Box.

Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga i varje typ av klinik och labbkonto.

Kontotyp		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Klinikkonton	Admin	O	O	X	X	O	O	O
	Medlem	O	X	X	X	O	O * Endast återställningsfunktion	O
Labbkonton	Admin	X	X	O	O	O	O	O
	Medlem	X	X	X	O	O	O * Endast återställningsfunktion	O

Titelfält

Titelraden ger snabb åtkomst till funktioner som nätverksstatus, molnsynkronisering och aviseringar.

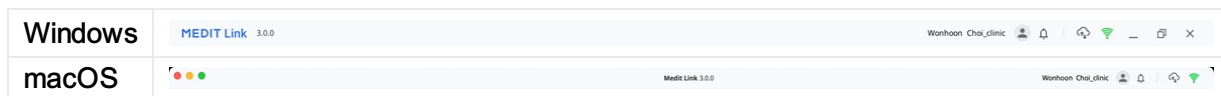

Min information

Min information visar grundläggande information som profilbild, organisationsnamn, e-postadress och användarnamn.

Här finns också ett utloggningsoption och en genväg till sidan Mitt konto på Medit Links webbsida.

The screenshot shows a 'My Information' section. On the left, there's a profile picture placeholder (labeled 1). To its right, the 'Organization Name' field (labeled 2) contains 'Wonhoonchoi_Clinic_Dev'. Below this, the 'Email Address' field contains 'wonhoon.choi@medit.com'. Further down, the 'Name' field contains 'Wonhoonchoi_Clinic'. At the bottom right, there are three buttons: 'Close', 'Log Out' (labeled 3), and 'Edit >' (labeled 4).

1	Visar profilbilden.
2	Visar organisationsnamn, e-postadress och användarnamn.
3	Loggar ut från det aktuella kontot.
4	Gå till Medit Links webbsida medan du är inloggad med det aktuella kontot. Du kan visa, redigera och hantera den kontoinformation som du angav när du registrerade dig.

Aviseringar

Du kan se aviseringar relaterade till kontrakt, beställningar och arbetsprocesser.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Markera rutan för att endast visa olästa meddelanden. |
| 2 | Du kan klicka på en avisering och direkt gå till det relaterade fallet eller den kopplade webbsidan. |

Fallsynkroniseringsansvarig

Case Synchronization Manager

Upload
Download

Total Count: 240

Cancel All
Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case111111111111111111111111123123123131312333111111111111111444444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Totalt antal fall/Valda fall	Markera totalt/antal valda fall som ska laddas upp.
Ladda upp allt	Ladda upp alla fall i molnet.
Avbryt allt	Avbryt alla förfrågningar.
	Ladda upp alla fall i molnet.
	Avbryt uppladdning av valda fall.
	Försök att ladda upp fallet igen.

Totalt antal fall/Valda fall	Markera totalt/antal valda fall som ska laddas ned.
Ladda ner allt	Ladda ned alla fall till datorn.
Avbryt allt	Avbryt alla nedladdningsbegäranden.
	Ladda ned alla fall till datorn.
	Avbryt uppladdning av fallet.
	Försök att ladda upp fallet igen.

Nätverksstatus

Med Medit Link kan du sömlöst använda alla funktioner i tjänsten när du är uppkopplad mot ett nätverk.

För att hjälpa dig att kontrollera statusen för din nätverksanslutning i realtid, visas nätverksstatusikonen i titelfältet.

Om nätverksanslutningen inte är bra uppstår följande begränsningar:

- Vissa funktioner begränsas, såsom fallbeställning, fallskapande, delning via Case Talk och molnsynkronisering.
- Försämrad nätverksmiljö kan reducera tjänstens övergripande prestanda.

Upplever du detta kan du använda offlineläget för att utföra grundläggande uppgifter och sedan använda de funktioner som kräver internet när du är uppkopplad.

iNot

Nätverkshastighetssymbolen visar svarshastigheten mellan det aktuella området och AWS (Amazon Web Service). Det visar dock inte din nätverkshastighet, varför din status ibland kan visas som svag eller dålig, även när din nätverkshastighet är tillräckligt hög.


Om det finns annan process som också använder samma nätverk kan hastigheten visas som svag eller dålig, och den övergripande prestandan för Medit Link kan vara dålig. Upplever du detta, undvik att dela nätverket med andra processer.

Till exempel tar funktionen "Ladda upp rådata" en stor del av nätverksprocessen. Om symbolen visar statusen som svag eller dålig, gå till Inställningar > Ladda upp rådata och avaktivera "Ladda upp automatiskt".

Meny

Dashborad


Här kan du se statistiken för hela arbetet med Medit Link i visualiserade grafer och diagram – både i Medit Link-appen och på webben.

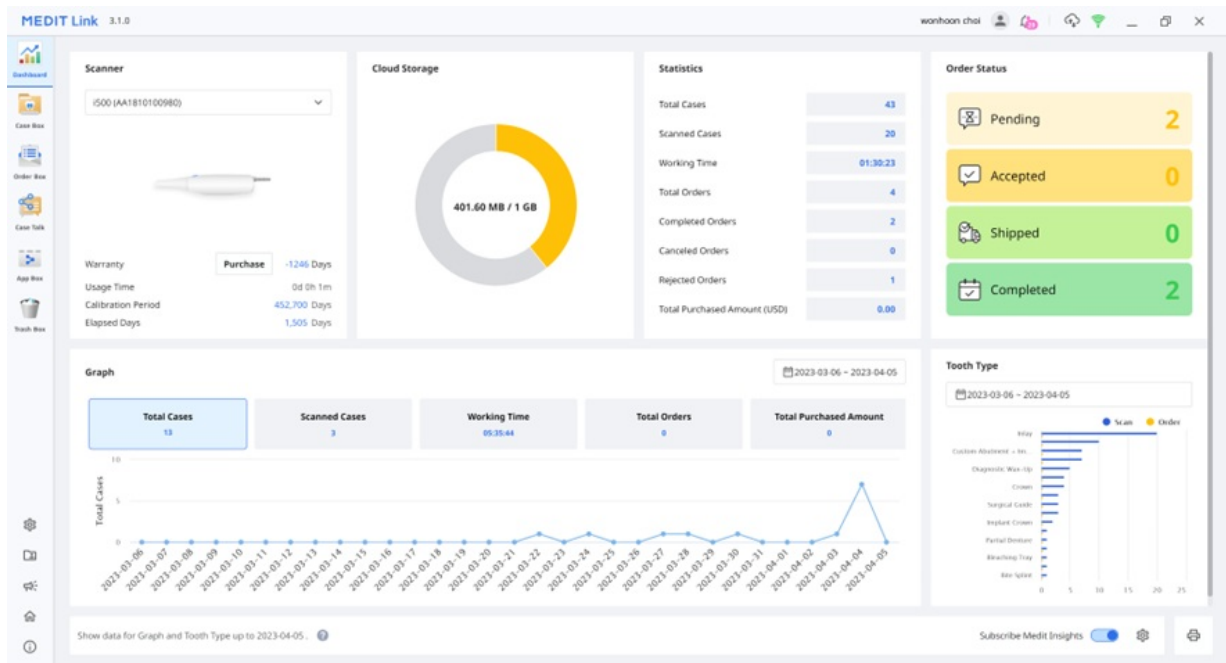

INot

Se [Medit Links webbsida > Dashboard](#) för mer information om Dashboard och Medit Insights.

Case Box/Work Box

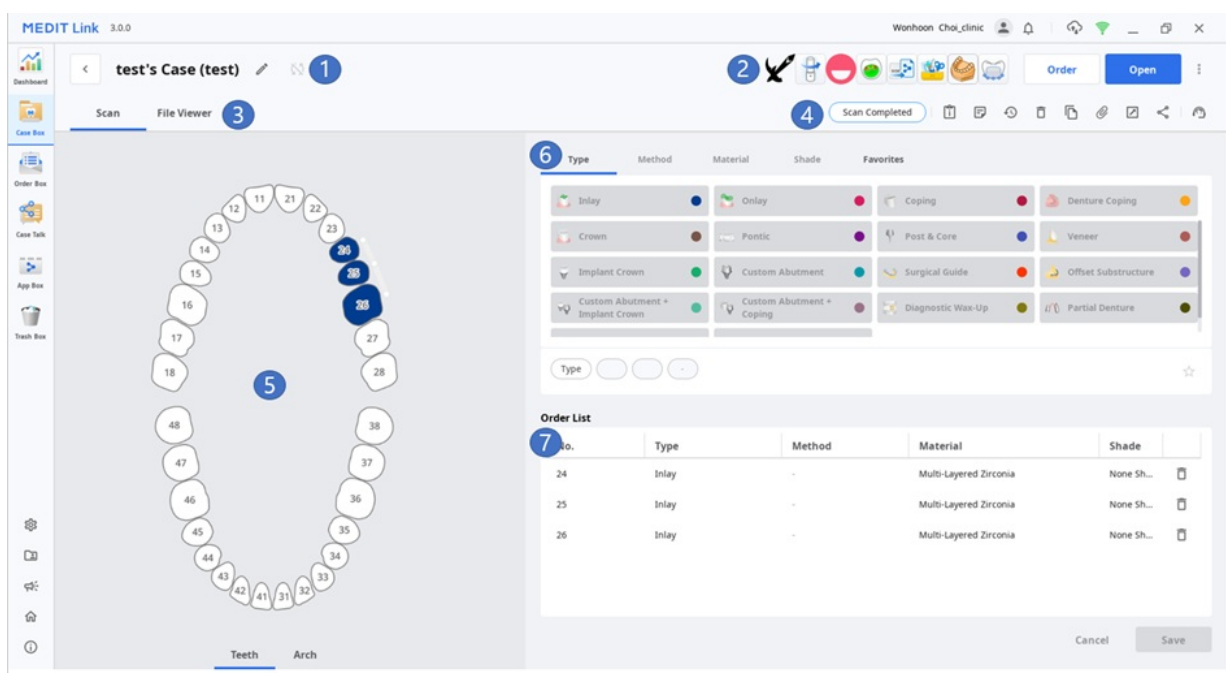

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Tillhandahåller tillgängliga huvudfunktioner: Beställ/Skanna(Öppna)/beställningsknappar och appikoner.
3	Visar tillgängliga flikar: Form, CAD och Filvisning.
4	Visar funktioner för fall- och filhantering.
5	Visar formulärregistreringsgränssnittet för det valda CAD-programmet.
6	Visar typ/metod/material/nyansinformation som användare kan välja för det valda tandnumret.
7	Visar typ/metod/material/nyansinformation som tillämpas på de valda tänderna.

Tabbar i Case Box/Work Box

Form	CAD	Filvisning
Fliken Form tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ange grundläggande information för skanningsarbete, såsom typ, metod, material för tandnummer och skanningsalternativ. Informationen du anger skickas till det anslutna skanningsprogrammet och används som beställningsinformation när du gör en beställning hos din partner.	CAD-fliken tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ställa in CAD-alternativ. Informationen du ställer in skickas till det anslutna CAD-programmet.	Visar resultatfiler som genererats av skanningsprogram och CAD. Filvisaren visar och hanterar hämtade och bifogade 3D-modeller och 2D-bilder.


Funktioner i Case Box/Work Box

Följande funktioner finns för Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.								
	Gå till detalj	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).								
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.								
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.								
	Fallhistorik	Visar detaljerad information om fallhistoriken. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									


	Radera	Radera fallet. Du kan inte radera beställda fall eller fall skapade offline.
	Klona	Skapa en dubblett av det aktuella fallet i Case Box. All data kopieras till det klonade fallet. Med den här funktionen kan du replikera behandlingsinformation för samma patient eller göra en extra beställning med samma information eller filer.
	Bifoga	Bifoga filer i olika format.
	Exportera	Exportera skannings- eller CAD-resultatfiler till datorn. Du kan välja önskat filformat när du exporterar filer. De exporterade filerna kan användas för vidare arbete i CAD- och CAM-program.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox och Safari utan att installera ytterligare program. Du kan dela länken fritt med vem som helst eller endast med specifika personer. Du kan ställa in en PIN-kod eller ett utgångsdatum för en länk för att skydda privat information.
	Skicka in supportförfrågan	Gå till en Medit Hjälpcenter-sida för att skicka in en supportförfrågan.

Order Box/In Box

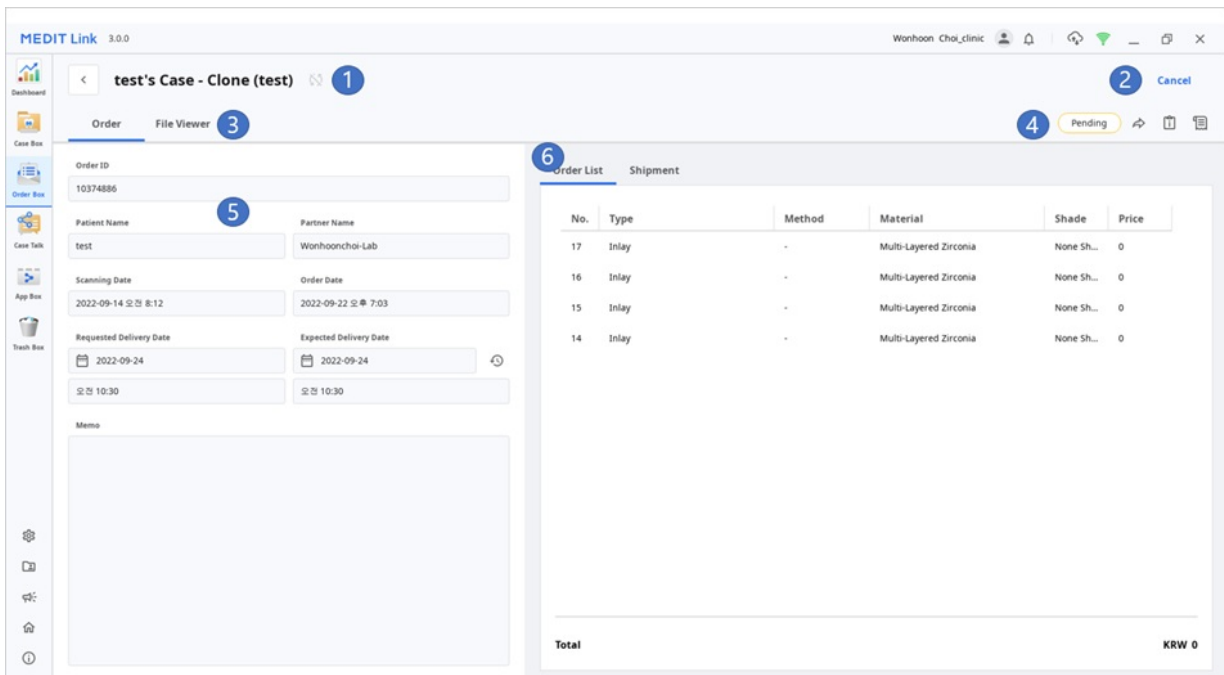

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
17	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
16	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
Total					KRW 0

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande).
3	Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning

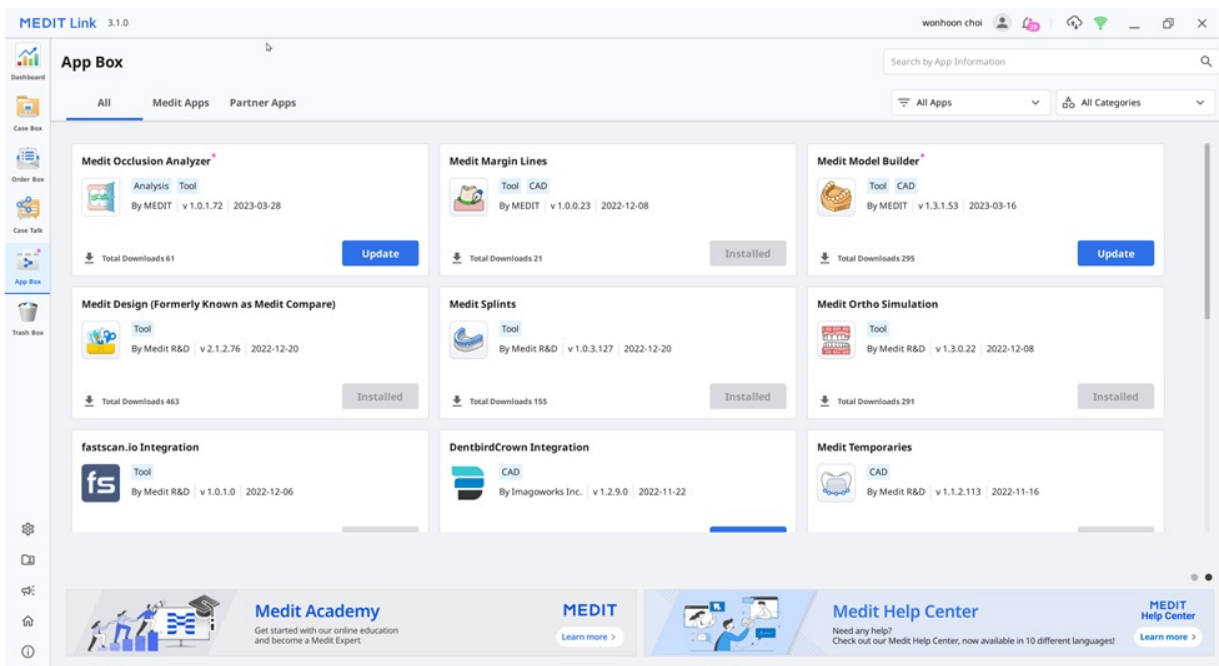

Trash Box

Trash Box lagrar tillfälligt dina raderade fall. Alla fall i Trash Box kan antingen återställas eller raderas permanent.

⚠ Obs

Data som raderas från Trash Box raderas permanent från din dator och servern, och kan inte återställas.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Inställningar

Se [Medit Link App > Inställningar](#) för detaljerad information i fönstret Inställningar.

Patienthantering

I fönstret Patienthantering kan du lägga till, redigera, radera och slå samman patienter.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试记录				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Lägg till ny patient

1. Klicka på "Ny patient".

New Patient

Patient Name*

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

2. Fyll i den nödvändiga informationen i dialogrutan "Ny patient" och klicka sedan på "Spara".

Radera patient

iNot

Du kan radera en patient om det inte finns några fall för patienten.

1. Välj den patient du vill radera från listan.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	sulkyadikif				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Klicka på "Radera".

Sammanfoga patienter

Du kan slå samman alla fall med flera patienter till en enda patient.

1. Välj de patienter du vill slå samman från listan.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	SCX-111111				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test21231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. Klicka på "Slå samman patienter".
3. Välj den målpatient för vilken du vill slå samman alla fall.
4. Alla fall slås samman till målpatienten och patientinformationen för målpatienten bibehålls.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klicka på "Tillämpa" för att utföra sammanslagningen.

Meddelande & uppdateringar

Här kan du se viktiga meddelanden från Medit och programuppdateringar av Medits programvara.

Gå till Medit Links webbsida

Du kommer till Medit Links webbsida för det konto som du är inloggad med.

Information från Medit

Här får du information om hur du använder Medit Link. Få tillgång till Medits utbildnings- och informationsresurser, som Medit Academy, Medit Academy YouTube och Medit Help Center.

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

Inställningar

Allmänt


Visar alternativ för övergripande systeminställningar.

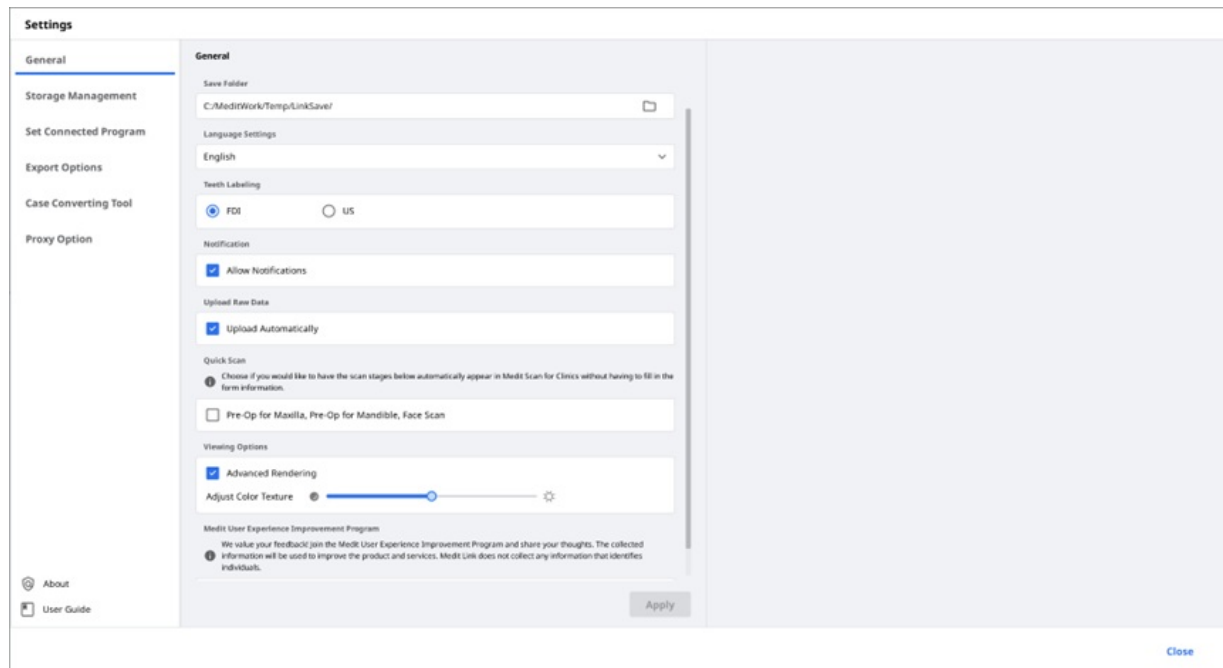

Spara mapp	Ange en mapp för att lagra dataresultaten skapade i Medit Link och anslutna program.	
Språkinställningar	Välj programspråk.	
Tandmarkering	Välj mellan tandmärkningssystemen FDA och US.	
Aviseringar	När detta är markerat får du aviseringar om programuppdateringar.	
Ladda upp rådata	När detta är markerat laddas rådata automatiskt upp till molnet. Det gör att du kan säkerhetskopiera originaldata och utföra sömlös skanning när du använder Medit Link med samma konto på en annan dator. Den ursprungliga molnbackupen av dina data gäller endast data som förvärvats i Medit Scan for Clinics.	
Snabbskanning	Välj om du vill att skanningsstadierna nedan ska visas automatiskt i Medit Scan for Clinics utan att behöva fylla i forminformation. • Pre-op för överkäke • Pre-op för underkäke • Ansiktsskanning	
Visningsalternativ	Avancerad rendering	När denna är markerad visas 3D-modellen i en mer levande och realistisk rendering.
	Justera färgtextur	Justera ljusstyrka på 3D-modellen. * De resulterande färgerna kan skilja sig något från Medit Link när du öppnar samma data med ett annat program.
Program för att förbättra användarupplevelsen av Medit	Gå med i programmet för att förbättra användarupplevelsen av Medit. • Vi använder den insamlade informationen för att förbättra våra produkter och tjänster. • Vi samlar inte in någon information som identifierar individer.	

Lagringshantering

Kontrollera och hantera det lokala lagringsutrymmet och molnlagringsutrymmet.

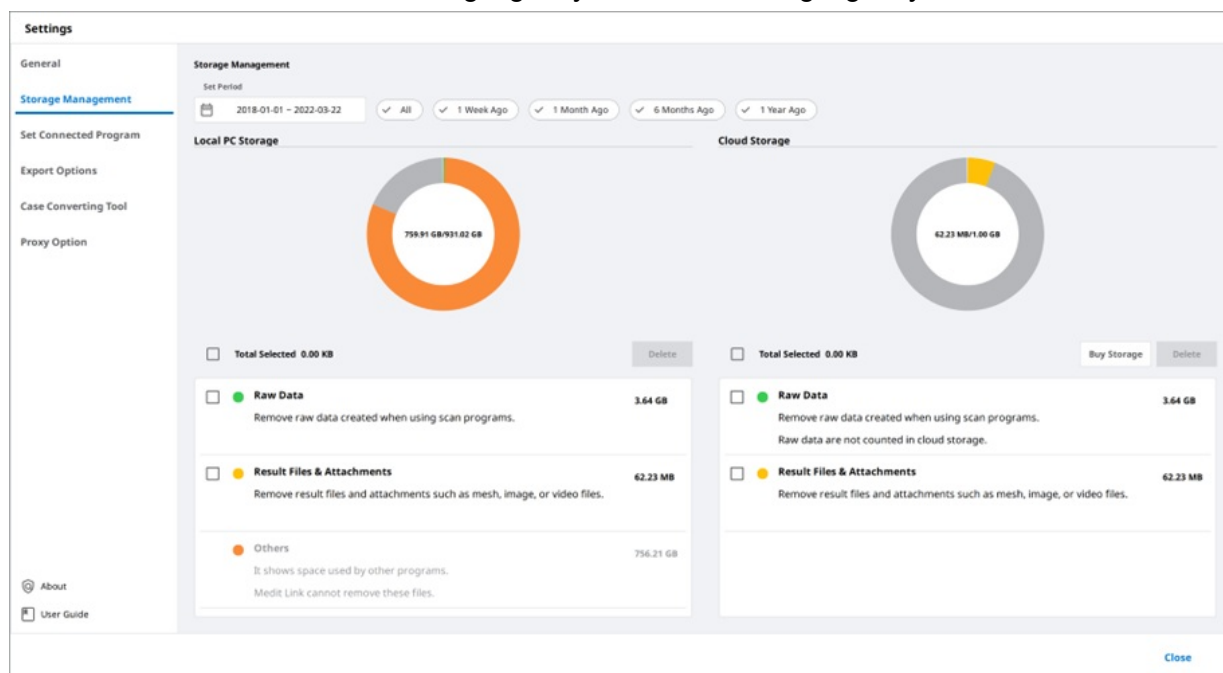

Ställ in period

Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden.

- Alla: Se alla filer.
- 1 vecka sedan: Visa filer skapade för 1 vecka sedan.
- 1 månad sedan: Visa filer skapade för 1 månad sedan.
- 6 månader sedan: Visa filer skapade för 6 månader sedan.
- 1 år sedan: Visa filer skapade för 1 år sedan.

Lokal lagring

Hantera lagringsutrymmet på datorn.

Rådata	Ta bort den valda rådatan från datorn. Om rådatan redan är uppladdad till molnet kan du ladda ner och använda den när du vill.
Resultat & bilagor	Ta bort resultat- och bifogade filer från datorn, såsom mesh, bilder och videor. Om dessa filer redan har laddats upp till molnet kan du ladda ner och använda dem när du vill.
Övriga	Se vilka filer som används för att styra systemet och andra program. Visar lagringen på din dator. Du kan inte ta bort dessa filer i Medit Link.
Radera	Ta bort valda filer från datorn.


Molnlagring

Hantera molnlagringsutrymmet.

Rådata	Rådata tar inte upp molnlagringsutrymme, därför finns denna inte med i cirkeldiagrammet. Men du kan hantera rådata härifrån vid behov, t.ex. radera data för att skydda patientens privata uppgifter etc.
Resultat & bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Köp lagringsutrymme	Om du har standardplanen kan du välja Premium för att utöka din molnlagring.
Radera	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra lagringsutrymme.

Ställ in anslutna program

Hantera programmen som stöder integration i Medit Link.

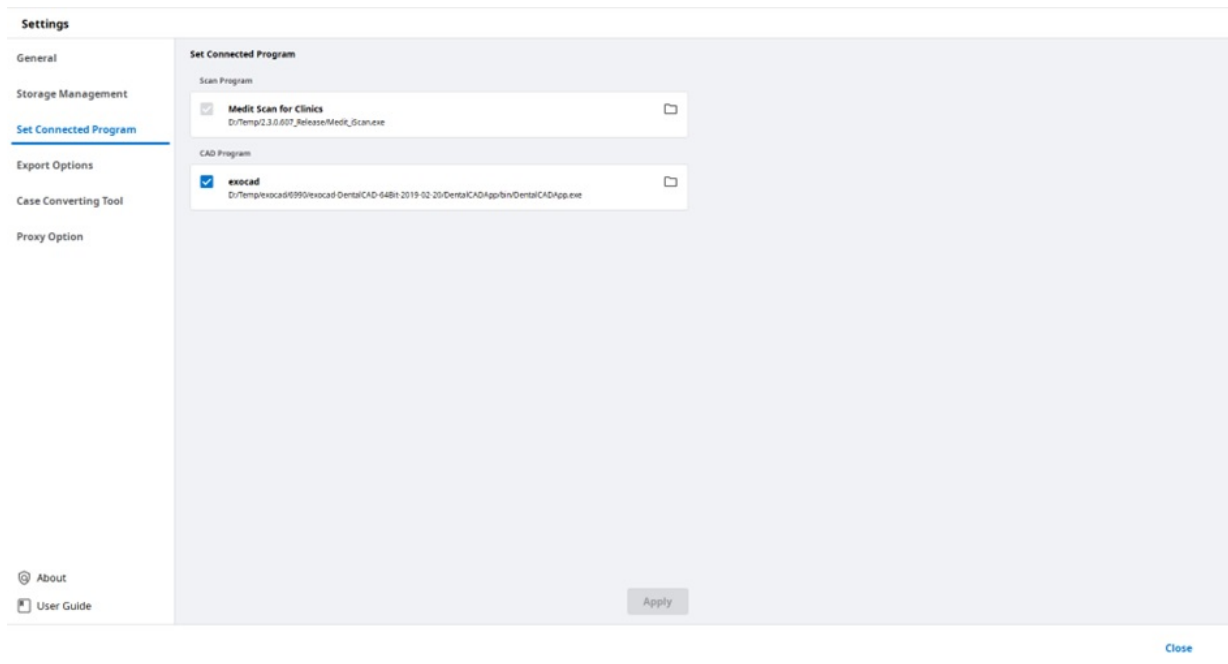

Du kan ansluta följande program:

	Klinikkonto	Labbkonto
Skanningsprogram	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.
CAD-program	exocad	exocad

iNot

Integrering av följande tjänster är inte tillgängligt med Medit Link för Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Exporteringsalternativ

Ställ in hur filer ska exporteras från Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

CAD Type

Maestro

Export Files To

C:/Users/Medit-Worhoonchoi/Desktop/test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ medtMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Name

Rule for File Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Name

Apply

Close

CAD-typ	Välj det CAD-program du vill använda för att designa. Programmet kommer att justera resultaten baserat på ditt val, så att du kan fortsätta med designen utan ytterligare axeljustering.
Exportera filer till	Ange sökvägen till där du vill lagra resultaten.
Meshformat	Ange formatet för den slutliga mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera & kombinera	Komprimera filer: Komprimera alla resultat till en enda fil. Kombinera individuell mesh: Kombinera överkäkes- eller underkäkesresultat till en enda fil. När du använder vissa program som inte kan importera och arbeta med flera filer, kan du slå ihop dem till en enda för att kunna arbeta med dem i dessa program.
Alternativ för när samma mapp eller fil redan existerar.	Välj standardåtgärden för fall där samma mapp eller filnamn finns i målsökvägen. • Fråga alltid vid exportering. • Exportera en ny fil och skriv över befintliga filer. Filen som finns lagrad kommer att gå förlorad. • Skapa en mapp och exportera filerna
Regler för mappnamn	Definiera regler för att skapa ett mappnamn vid export av filer. De angivna reglerna kommer att tillämpas på mappnamn, och den exporterade filen kommer att sparas i den skapade mappen. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID

Regler för filnamn	Definiera regler för det exporterade filnamnet. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Patient-ID, Beställnings-ID • Labbkonto Fall skapat datum, Skanningsdatum, Beställningsdatum, Patientens namn, Fallets namn, Partnernamn, Beställnings-ID
--------------------	--

Fallkonverteringsverktyg

Flytta fall mellan olika konton.

The screenshot shows the 'Case Converting Tool' interface. On the left is a sidebar with 'Settings' and various options. The main area is divided into 'Export' and 'Import' sections.

Export Section:

- Buttons: 2020-09-13 ~ 2020-09-20, All, Search / Contains
- Table: Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오후 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 1111111111	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 10:19

File Name: CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export button

Import Section:


- Text: A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.
- Import from: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/
- Import button
- File List table:

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오후 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오후 8:55


Close button at the bottom right.

Så använder du Fallkonverteringsverktyg

1. Öppna Medit Link och klicka på "Inställningar".

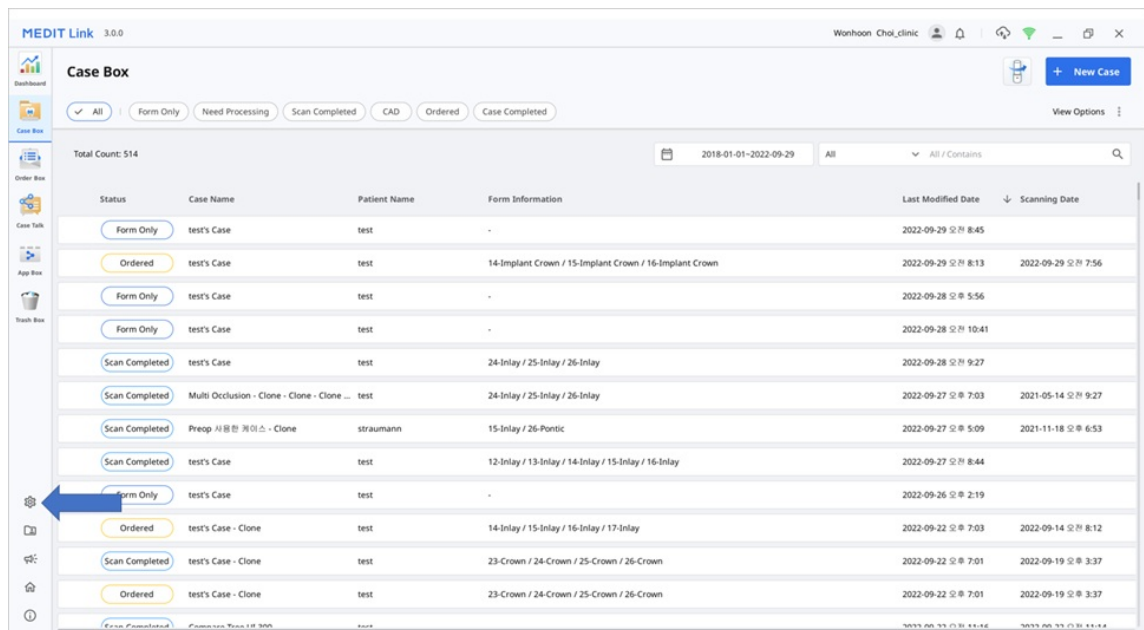


2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

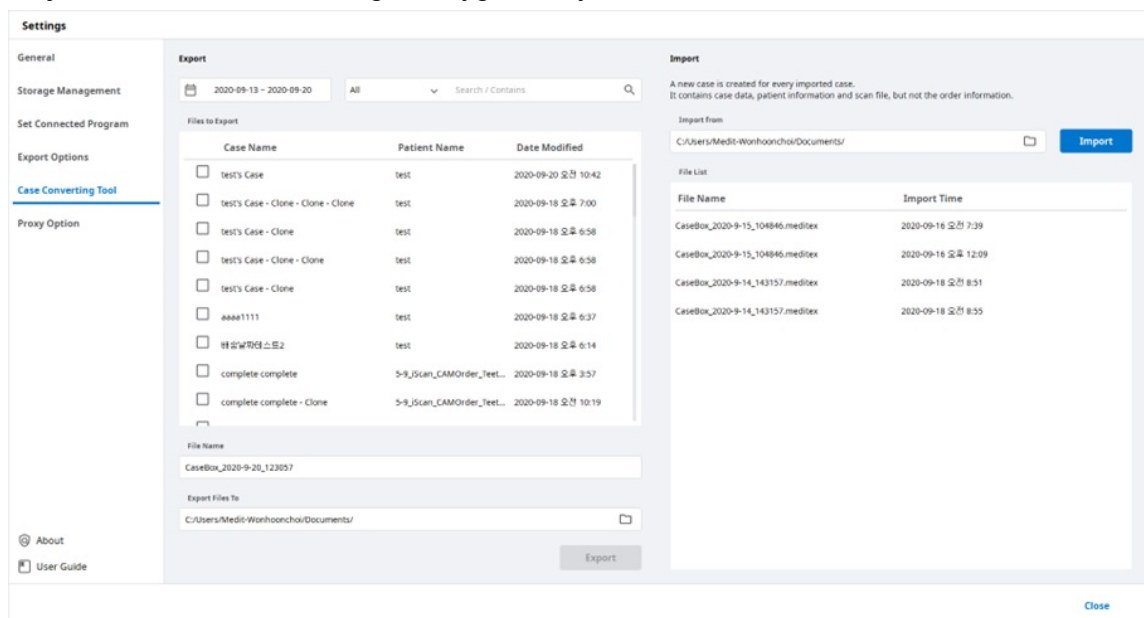

3. I importsektionen klickar du på mappikonen på din dator för att söka efter den .meditex-fil som du vill importera.


4. Klicka på knappen "Importera" och markera den importerade filen i fillistan nedan.

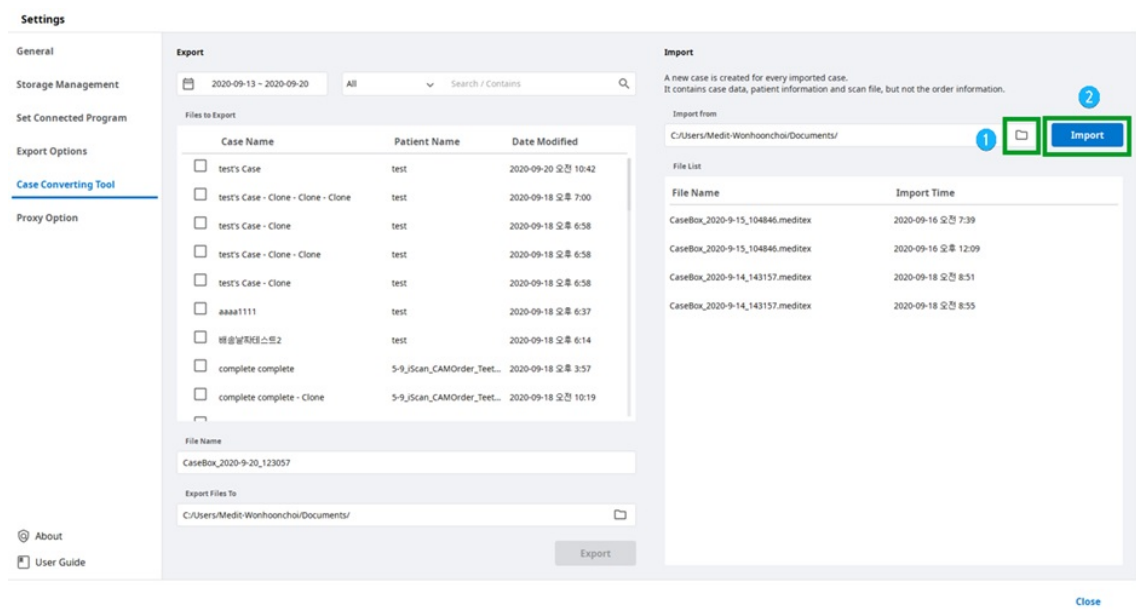

5. Det importerade fallet kommer också att visas i din Case Box (klinikkonto) eller Work Box (labbkonto).


Proxyalternativ

I vissa begränsade nätverksmiljöer kan du ändra nätverksinställningar.

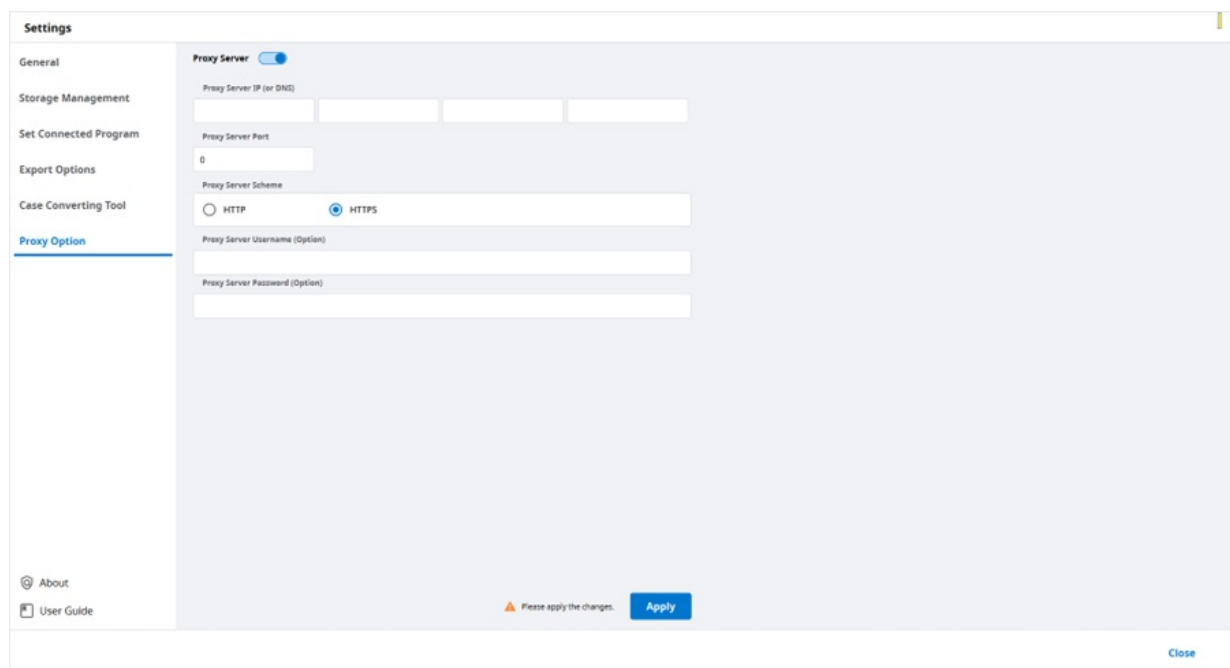

Om

Visa detaljerad information om Medit Link.

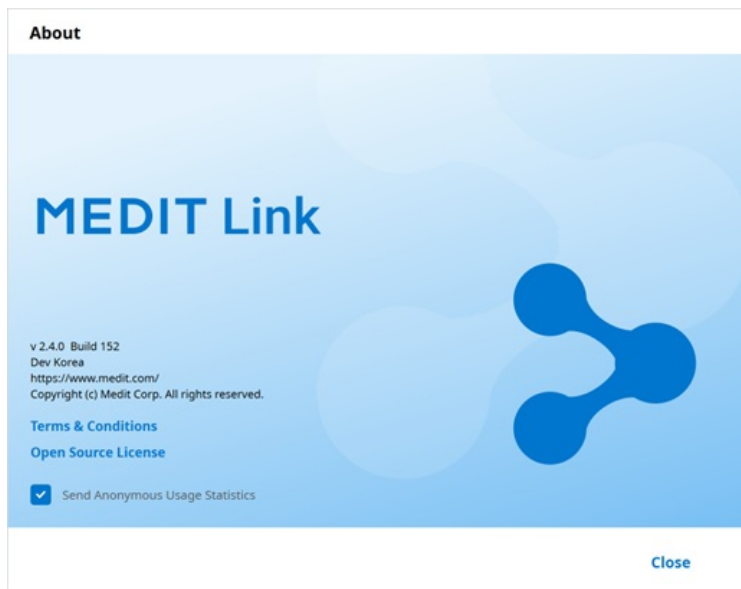

Användarguide

Hämta användarguiden för Medit Link.

För att öppna användarguiden krävs en internetanslutning.

Filvisning

Filvisning grupperar och visar olika data, inklusive data som samlats in från program kopplade till Medit Link och data som bifogats av användare.


Det tillhandahåller grundläggande administrativa funktioner som att visa/dölja data, justera opacitet och radera data.

Det stöder förhandsgranskning av filer i följande format:

- 3D-data: STL, OBJ, PLY
- 2D-bilder: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videofiler: MKV, MP4, AVI, WMV

Dataträd

I dataträdet kan du gruppera och visa all data i fallet. Du kan också visa/dölja data, justera transparens och radera data från dataträdet.

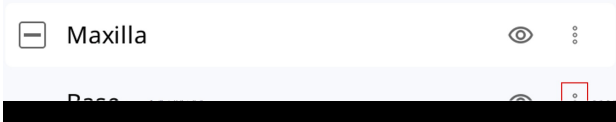	Visa/dölj	Du kan visa eller dölja data.
	Opacitet	Skjutreglaget visas när du klickar på någon data i dataträdet. Med skjutreglaget kan du justera opaciteten för visade data. 
	Mer	Om du klickar på ikonen Mer visas ytterligare tillgängliga funktioner.  • Visa endast detta: Visa endast motsvarande data och dölj alla andra data. • Dölj: Dölj data. • Duplicera: Kopiera data och lägg till i gruppen som ska bifogas. • Exportera: Exportera valda filer. • Döp om: Ändra namn på data. • Radera: Radera data.





iNot

Du kan ändra namn på data när du är online.

Modellkontrollverktyg

3D-modellkontroll

	Panorera	Flytta modellen.
---	----------	------------------

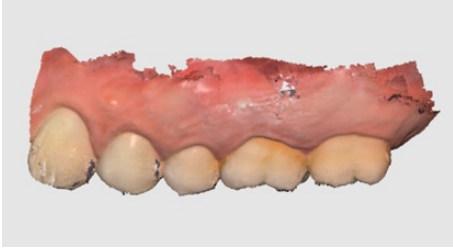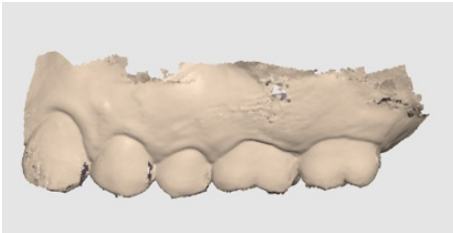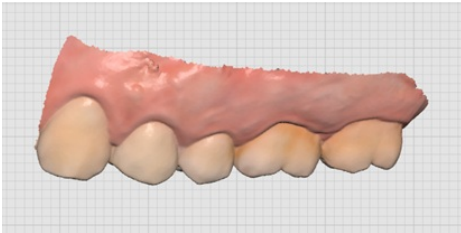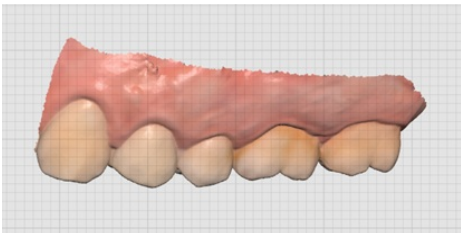	Rotera	Rotera modellen.
	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.
	Modellvisningsläge	Textur på
		Visa data i verkliga texturfärger. 
		Textur av
		Visa data i en enda färg. 
	Rutnätsinställningar (mm)	Rutnät på
		Visar rutnätet i bakgrunden. 
		Lager på
		Lägg rutnätet över modellen. 
		Rutnät av
		Göm rutnätet.

2D-bildkontroll


	Nästa/Föregående bild	Flytta dig mellan bilder.
	Redigera	Redigera bilden.
	Nyp/fäst fönstret	Du kan ta loss bildfönstret och flytta det till önskad position. Du kan återställa fönstret. När fönstret återställs till sin ursprungliga plats återgår det till standardstorleken.

Funktionsverktyg

Skärminspelning och memo


Avbilda den aktuella skärmen som en 2D-bild, rita på den eller lägg till anteckningar.

Du kan spara den som en fil med dina anteckningar och skicka den som en referens.

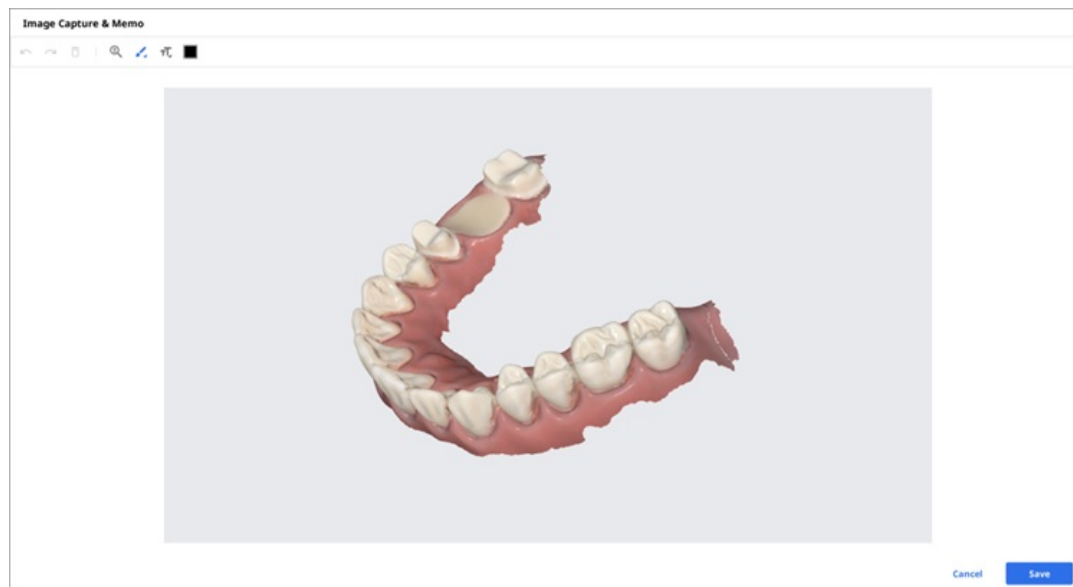

Orto-inspelning


Fånga bilderna i aktuell visningsriktning och uppifrån/nerifrån/från vänster/från höger mot den aktuella visningsriktningen.

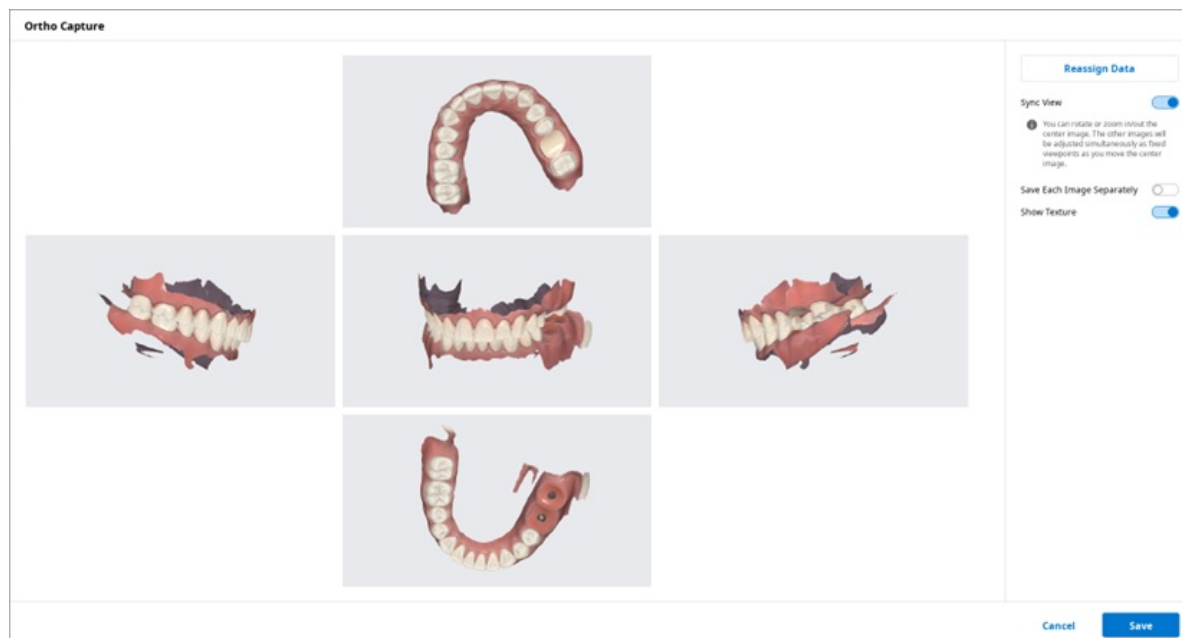

Synkroniseringsvisning


När denna är aktiverad kan du rotera och zooma in/ut i mittenbilden. När du flyttar mittenbilden kommer övriga bilder samtidigt att justeras som fasta synvinklar.

När denna är avaktiverad kan du panorera, rotera och zooma in/ut i alla bilder en och en.

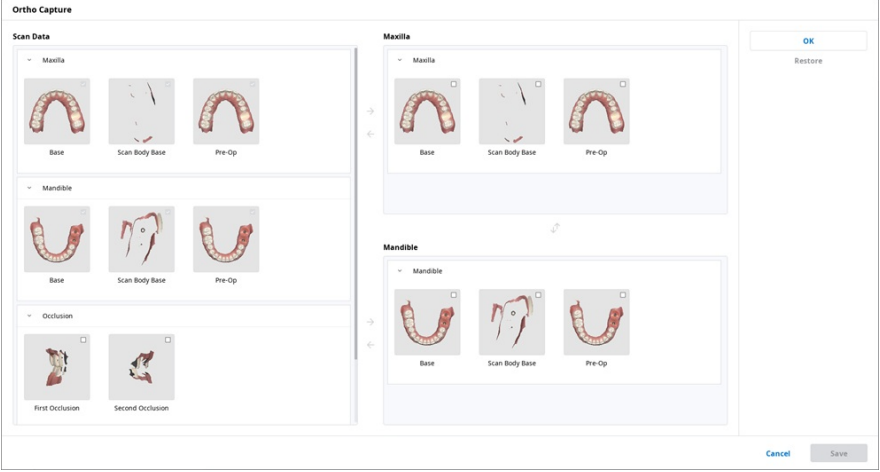Spara varje bild separat	Spara varje bild med högkvalitativ upplösning.
Visa textur	Slå på/av texturen för modellen.
Tilldela om data	Ändra data för överkäken/underkäken med hjälp av funktionen Tilldela om data. Du kan använda dina ändrade data för att skapa och använda resultatbilderna från en Orto-inspelning.  • Skanningsdata: Visar alla skanningsdata för fallet. • Överkäke: Visar de data du markerat för överkäken. • Underkäke: Visar de data du markerat för underkäken.


Fyll hål

Fyll hål i 3D-meshdata.

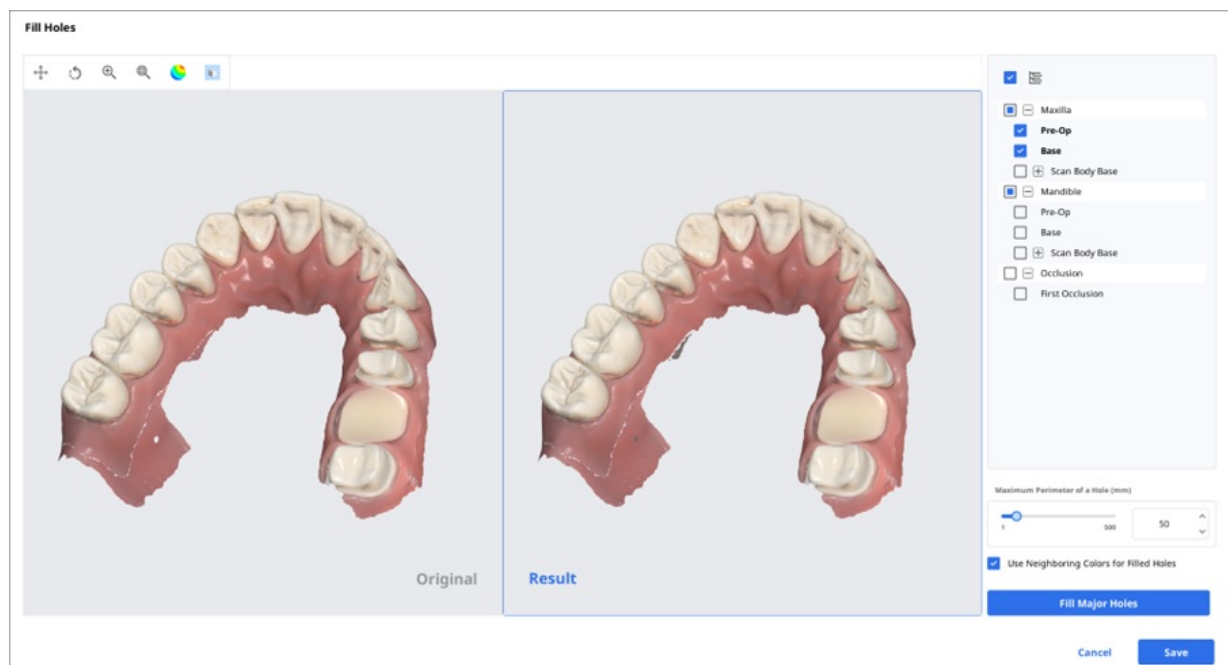

Trimning


Trimning tillhandahåller olika verktyg för dataredigering.

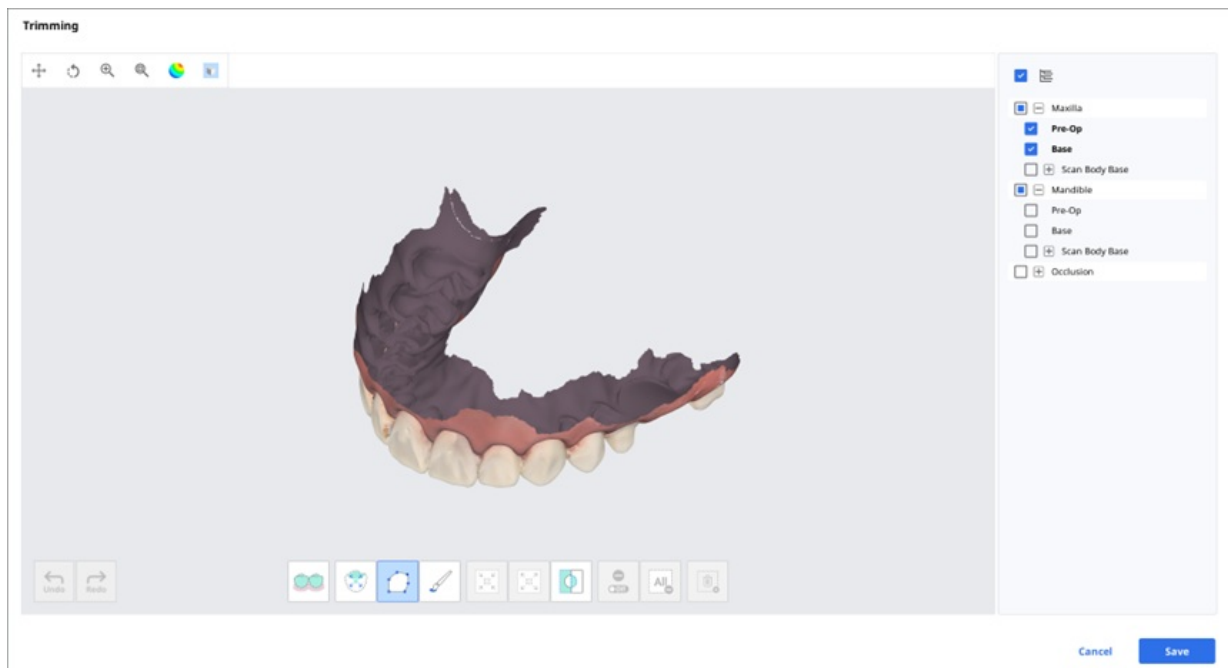

Valda 3D-meshdata kan redigeras med de olika verktygen i fönstrets nederkant.

Markering		Smart tandmarkering	Välj automatiskt alla tänder i käken utan tandkötsdelar. iNot Den här funktionen är endast tillgänglig för skanningsdata som har hämtats med Medit Scan for Clinics med alternativet "Använd GPU" aktiverat.
		Smart enskild tandmarkering	Välj automatiskt området för en enskild tand utan tandkötsdelar. Klicka, håll ner och dra muspekaren över tanden.
		Polyline-markering	Markera alla enheter inom en polylineform ritad på skärmen.
		Penselmarkering	Markera alla enheter på en frihandsritad väg på skärmen. Endast främre området kommer att väljas. Penseln finns i tre olika storlekar.
Justering av valt område		Krymp det valda området	Minska det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Expandera det valda området	Expandera det valda området varje gång du klickar på knappen.
		Invertera det valda området	Invertera markeringen.
Avmarkera		Markera/Avmarkera	När detta är aktiverat kan du avmarkera området med hjälp av olika verktyg.
		Rensa alla markeringar	Rensa alla markerade områden.
		Radera det valda området	Radera data från det valda området.

1. Välj det område du vill trimma med områdesvalsverktygen.

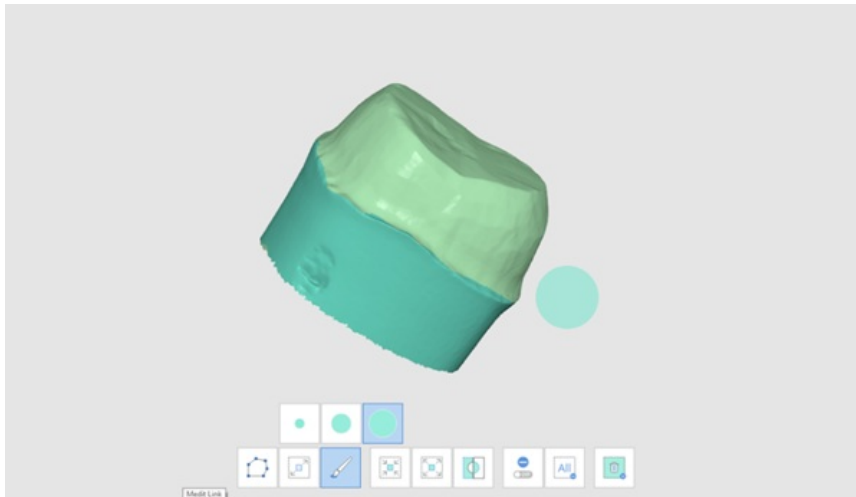


2. iNot


Verktøget "Polyline-trimning" markerar alla enheter inom en polylinjemarkering ritad på skärmen, medan verktøget "Penseltrimning" endast väljer ansiktsdata framifrån.

3. Du kan invertera, krympa eller utöka urvalet med följande tre verktyg.


- Invertera det valda området

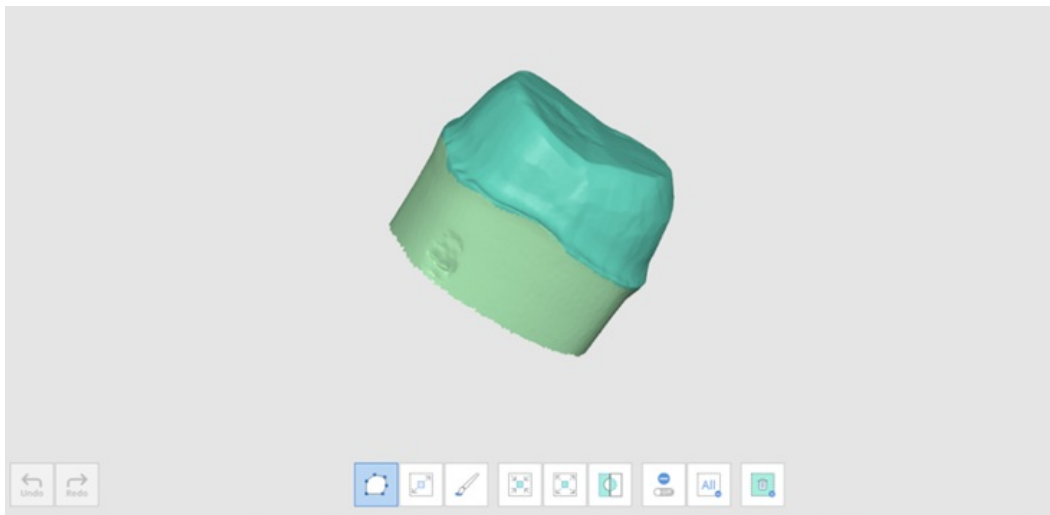

- Krymp det valda området

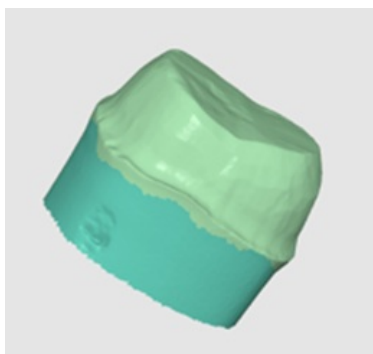


- Expandera det valda området

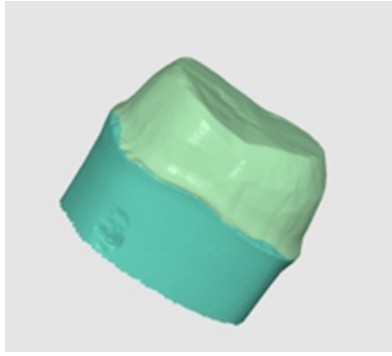

4. Du kan avmarkera de markerade områdena med verktyget Radera det valda området.




Optimera ocklusionsinriktning

Optimera ocklusionsinriktning. Välj måldata och justera ocklusionsinriktningen.

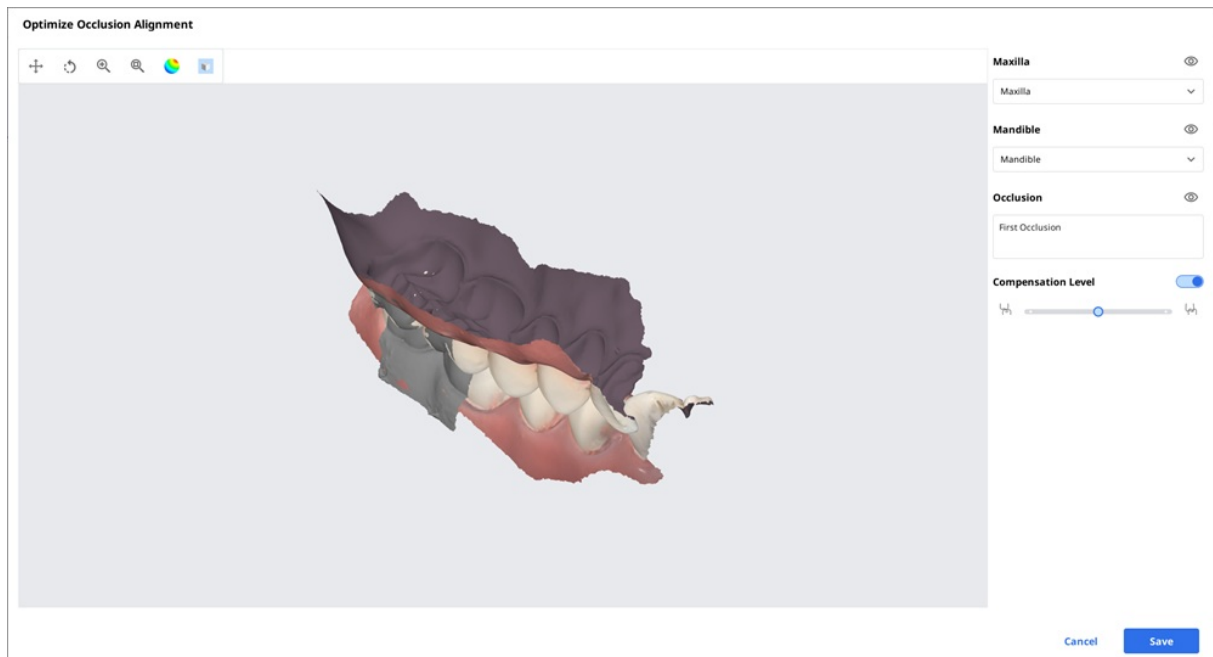


Kompensationsnivå

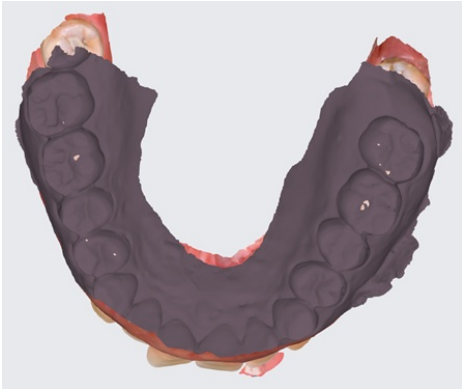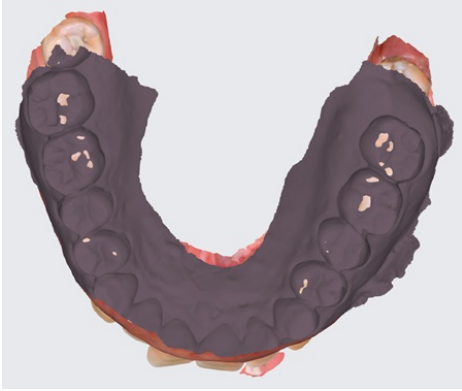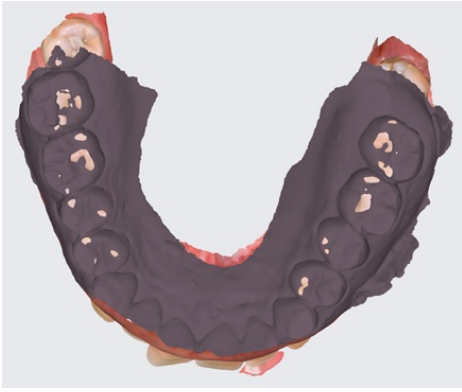

Mellan	Compensation Level 	
Hög	Compensation Level 	
Av	Compensation Level 	

Underkäkesrörelse

Du kan spela upp underkäkesrörelse som registrerats i Medit Scan for Clinics för att se de dynamiska ocklusionskontakterna mellan övre och nedre tänder.

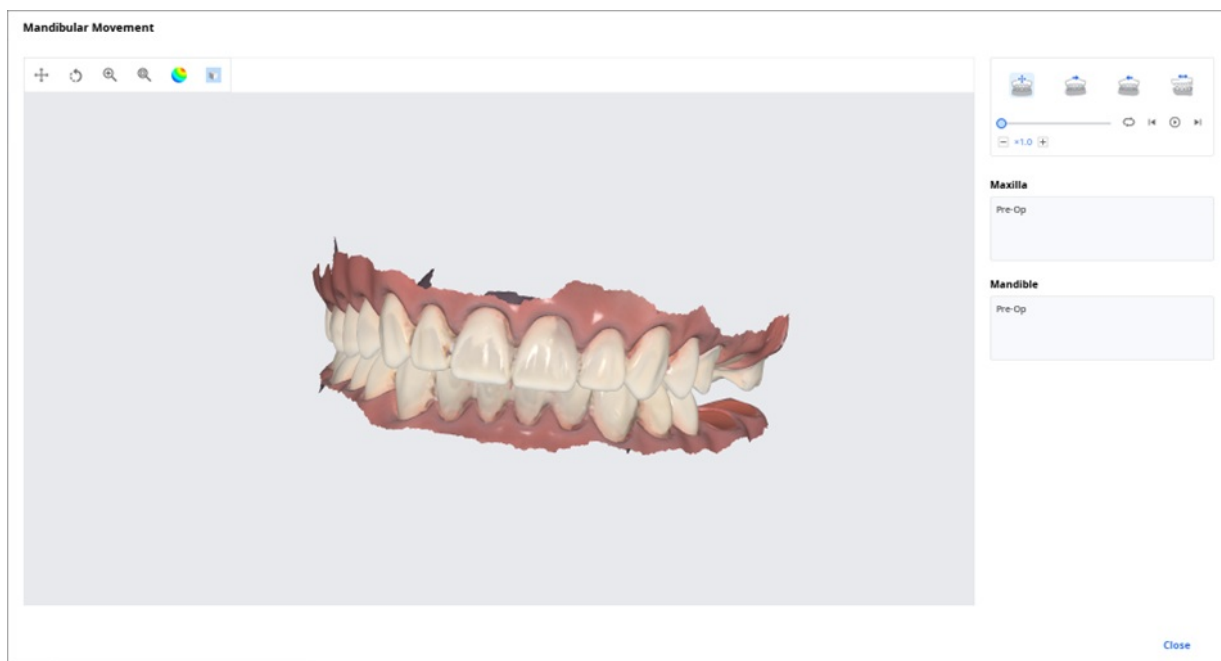

	Fri rörelse	Spela upp underkäkesrörelse.
	Vänster sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt vänster.
	Höger sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt höger.
	Utskjutande rörelse	Spela upp underkäkesrörelse framåt.

Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning

Med Medit Scan Application kan du få flera ocklusionsdataresultat.

Medit Link tillhandahåller en funktion för att hantera resultaten via "Filvisning".

Så hanterar du flera resultat


Om du får flera ocklusionsresultat med Medit Scan for Clinics kan du välja ett enda resultat i Medit Link.

Resultatlistan sorteras enligt namn där du kan välja ut ett objekt.

Den valda modellen visas i "Dataträd" och "Modellvisningsområde".



Du kan komprimera listan och ändra objektet med pilikonerna.

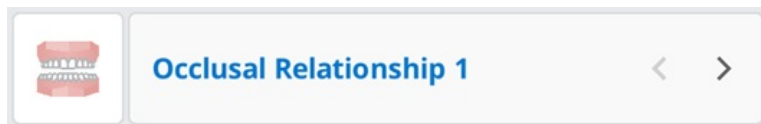

Visa alternativ

Gör ändringar i Visa alternativ för att anpassa falllistans layout i Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilter

Visa eller dölj filter som representerar fallets status. Dolda statusfilter visas inte på skärmen i Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Med hjälp av de visade filtren kan du enkelt hitta det fall du behöver.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

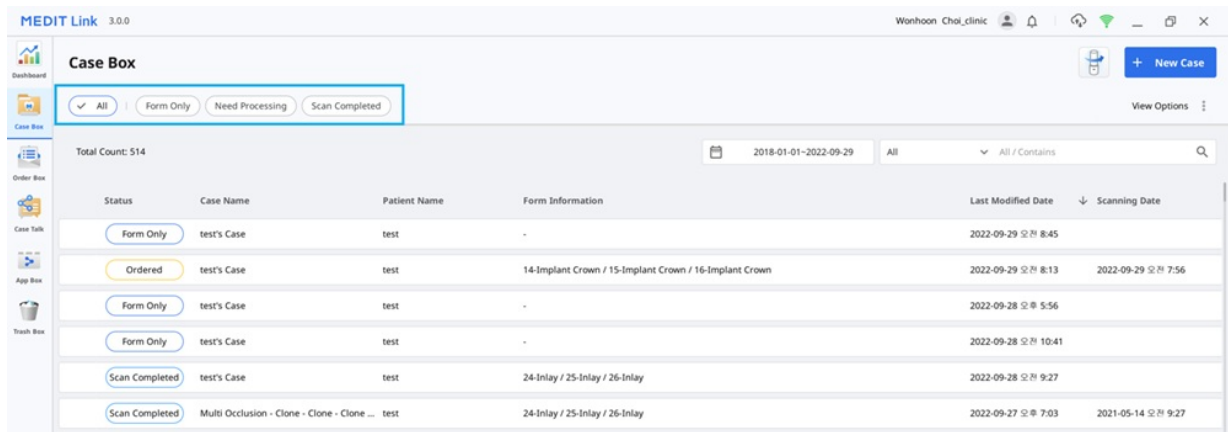

- Klicka på statusen du vill se för att endast visa fall med denna status.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

Tillgängliga filtreringsalternativ för varje box:

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed
In Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Stöds inte

Tabellobjekt

Välj vilka objekt som ska visas i fallistan i Case Box/Work Box/In Box/Order Box. För att optimera användarmiljön kan du ändra ordningen på tabellobjekten och justera tabellkolumnbredden i listvisningen.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box + New Case View Options

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Visningstyp

Välj Gallerivisning eller Listvisning som visningstyp i Case Box.

The screenshot displays the MEDKIT Link 3.0.2 interface. At the top, there's a navigation bar with the MEDKIT Link 3.0.2 logo and a sidebar with icons for Home, Cases, and Reports. The main area is titled 'Case Box' and features a status bar with filters like 'All', 'New Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below this, a grid of case cards is shown. Each card has a title, a status bar, and a list of cases with their dates and status. The cases are organized into groups, such as 'Test Cases', 'Test Cases', 'Test Cases', and 'Test Cases'.

Medit Link2.3.0 Release


Medit Link 2.3.0 2020-09-24

 Implant Crown Zirconia 11, 12, 13, 14,...	 Inlay Zirconia 3, 4, 5, 6, 7
 Crown Metal 18, 19, 20, 21,...	 1

2020-09-14 오전 7:43 Scan Completed

84

Listvisning

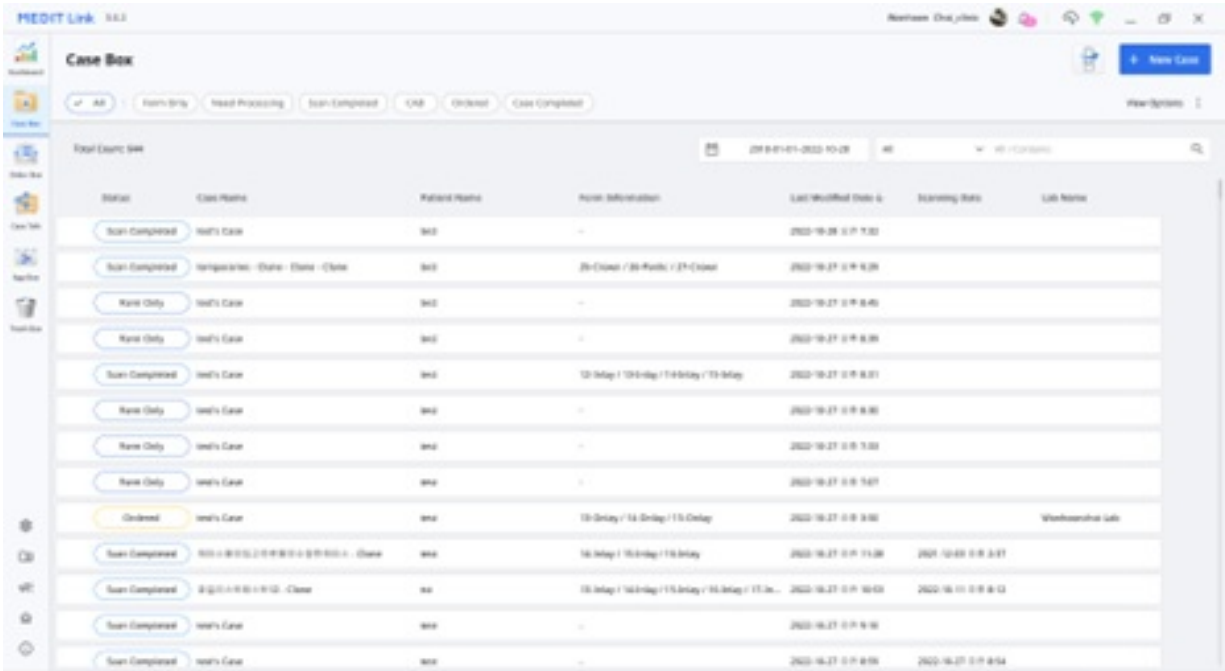

The screenshot shows the 'Case Box' interface in MEDIT Link. It features a top navigation bar with a 'New Case' button. Below the navigation bar, there are filter tabs for 'All', 'From Bkg', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CNS', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main table displays a list of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Appointment, Last Modified Date, Scanning Date, and Lab Name. The 'Status' column has a dropdown menu for each row. The 'Appointment' column shows dates and times. The 'Scanning Date' column shows dates and times. The 'Lab Name' column shows the name of the lab.

Gruppering

Välj ett grupperingsalternativ för att klassificera och ordna om fall i listan enligt det valda alternativet.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone v

☒ None

☐ Patient Name

☐ Order Date

☐ Scanning Date

SortingLast Modified Date >

För varje box finns följande grupperingsalternativ:

Box	Gruppering
Case Box	Inget
	Patientens namn
	Skanningsdatum
	Beställningsdatum
	Inget

Order Box	Skanningsdatum
	Beställningsdatum
	Begärt leveransdatum
In Box	Inget
	Beställningsdatum
	Begärt leveransdatum
Work Box	Inget
	Begärt leveransdatum

iNot

Alternativen för gruppering och sortering finns inte tillgängliga i Trash Box och Case Talk.

Sortering

Välj ett sorteringsalternativ för att ändra ordningen på fallen i listan enligt det valda alternativet.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting

Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

För varje box finns följande sorteringsalternativ:

Box	Gruppering	Sortering
Case Box	Inget	Patientens namn/Senast ändrat datum/Skanningsdatum/Labbnamn
	Patientens namn	Senast ändrat datum/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Skanningsdatum	Patientens namn/Senast ändrat datum/Beställningsdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientens namn/Senast ändrat datum/Skanningsdatum/Labbnamn
	Inget	Patientens namn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn

Order Box	Skanningsdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Beställningsdatum	Patientens namn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Labbnamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbnamn
In Box	Inget	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Beställningsdatum	Patientens namn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Kliniknamn
Work Box	Inget	Patientens namn/Senast ändrat datum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Senast ändrat datum/Kliniknamn

iNot

Alternativen för gruppering och sortering finns inte tillgängliga i Trash Box och Case Talk.

Filtrering och sök

Filtrering enligt datum

Filtrera och visa fall senast ändrade inom den angivna perioden.

1. Klicka på filtret för tidslängd.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Välj tidslängd i listan.

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som senast ändrats inom perioden.
- Idag: Visa de fall som ändrats senast idag.
- Igår: Visa de fall som ändrats senast igår.
- Senaste 7 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna exklusive idag.
- Denna månad: Visa de fall som senast ändrats under den här månaden.
- Föregående månad: Visa de fall som senast ändrats under förra månaden.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Avancerade sökfunktioner

Använd sökfunktionerna för att snabbt hitta den information du vill ha.

All

▼

Search / Contains



Följande sökkriterier är tillgängliga för varje ruta:

Case Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Forminformation, Labbnamn
Order Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Labbnamn, Beställnings-ID
In Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Beställnings-ID
Work Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Forminformation, Kliniknamn, Beställnings-ID
Case Talk	Case Talk-namn (Innehåller), Patientens namn (Lika med)
Trash Box (Klinik)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Labbnamn, Raderad av

Trash Box
(Labb)

Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Raderad av

Välj Sökkriterium och välj något av alternativen Innehåll och Lika med.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall

Skapa fall

Skapa fall i Case Box (klinik)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

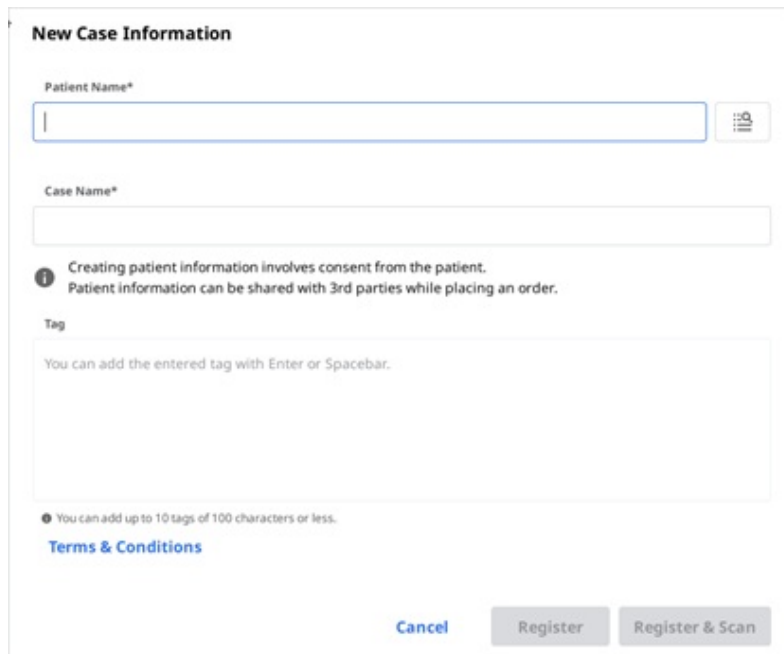


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a small icon to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A paragraph stating: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A section with a text input field and a note: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a link for "Terms & Conditions" and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. Ange grundläggande information, såsom patientens namn och fallets namn.
 - Om du anger ett namn som inte finns på patientlistan kommer en ny patient att läggas till.
 - Om du anger ett namn som finns i patientlistan kan du välja det från listan.
 - Om du registrerar ett fall för en befintlig patient, klicka på ikonen Patientlista för att välja en befintlig patient.



- I dialogrutan Patientlista kan du registrera en ny patient eller redigera informationen för en befintlig patient.

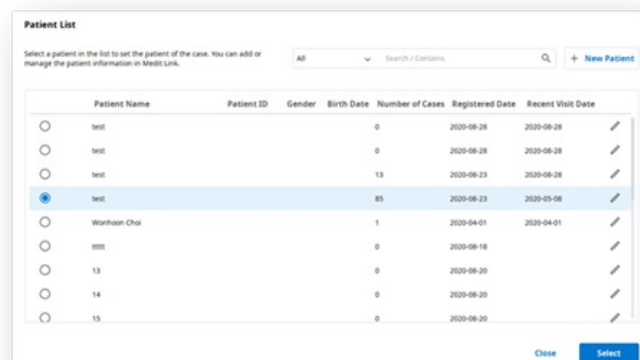

The "Patient List" dialog box displays a table of existing patients. At the top, there is a search bar and a "+ New Patient" button. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. Each row includes a radio button for selection and an edit icon.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date
☐ test				0	2020-08-28	2020-08-28
☐ test				0	2020-08-28	2020-08-28
☐ test				13	2020-08-23	2020-08-28
☒ test				85	2020-08-23	2020-05-08
☐ Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01
☐ test				0	2020-08-18	
☐ 13				0	2020-08-20	
☐ 14				0	2020-08-20	
☐ 15				0	2020-08-20	

3. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Klicka på "Registrera & Skanna" för att slutföra fallregistreringen och börja sedan skanna.
 - **Registrera**: Gå till fliken Form för att registrera forminformation för fallet.

- **Registrera & Skanna**Du omdirigeras till huvudsidan. Detta är användbart när du registrerar flera fall.

Skapa fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." Below the text area, a small note states: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (in blue text) and "Register" (a grey button).

2. Ange eller välj kliniknamn.
3. Ange patientens namn och fallets namn. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
4. Ange förväntat leveransdatum med avseende på slutdatumet för arbetet.
5. När du har registrerat fallet kommer du att omdirigeras till huvudsidan.

Redigera fall

Skapa fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Klicka på ikonen "Sök" för att ändra patientens namn. Observera att det inte går att redigera direkt; leta istället upp ett patientnamn som du vill ersätta det nuvarande med och redigera sedan patientinformationen från listan.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Leta upp namnet på en patient som du vill ersätta med den nuvarande.
4. För att skapa en ny patient, klicka på knappen "Ny patient".
5. Använd knappen "Redigera" för att ändra den registrerade informationen om patienten.
6. Klicka på "Tillämpa" för att slutföra processen.

Redigera fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Klicka på "Tillämpa" när du redigerat klart.

iNot

Du kan inte redigera information på fall som tagits emot genom beställning i In Box.

Klona fall

Klona fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Du kommer att tillfrågas vilken typ av information du vill klona till det nya fallet.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Välj om du vill replikera endast forminformation eller alla data.
4. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".

Klona fall i Work Box (Labbb)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Duplicera alla data för att skapa ett nytt fall.
3. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".


Radera fall

Radera fall (Klinik och Labbb)

1. Klicka på ikonen "Radera".



2. Klicka på ikonen "OK" för att radera fallet.

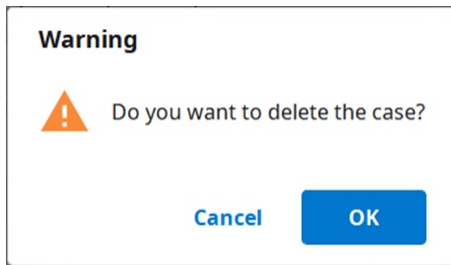

3. Raderade fall flyttas till Trash Box och kan återställas vid behov.

Forminformation

Du kan ange formulärinformationen baserat på det anslutna programmet och behandlingstypen.

Informationen du anger kommer att användas som grundläggande information för skanning, CAD och beställning.

Registrering av forminformation i Case Box

Gå in på fliken Form

1. Välj om du ska mata in behandlingsinformation för tänder eller käke.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
3. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Gå in på fliken CAD

1. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
2. Välj tandnummer/käke/nummer på gjutform.
3. Ange inställningarna för detaljerade alternativ och CAD-operationer.
4. Klicka på "OK" för att spara inställningarna.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
5. Klicka på "Spara" för att spara din registrering

Registrering av forminformation i Work Box

Gå in på fliken Form

1. Välj det skanningsprogram du vill använda.
2. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
3. Metoderna kan skilja sig åt beroende på valt skanningsprogram.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tänder	☐	☐
Käke	☐	☐
Flexibel multi-die	☒	☐
Multi-Die	☒	☐


4. Välj tandnummer, käknummer eller nummer på gjutform för skanningsprocessen.
5. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
6. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Gå in på fliken CAD

1. Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
2. Välj tandnummer/käke/nummer på gjutform.
3. Ange inställningarna för detaljerade alternativ och CAD-operationer.
4. Klicka på "OK" för att spara inställningarna.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
5. Klicka på "Spara".

Lägg till tänder till en brygga

Du kan lägga till flera tänder till en brygga när samma material appliceras på flera närliggande tänder. Klicka på bryggikonen bredvid de valda tänderna för att lägga till eller ta bort dem.

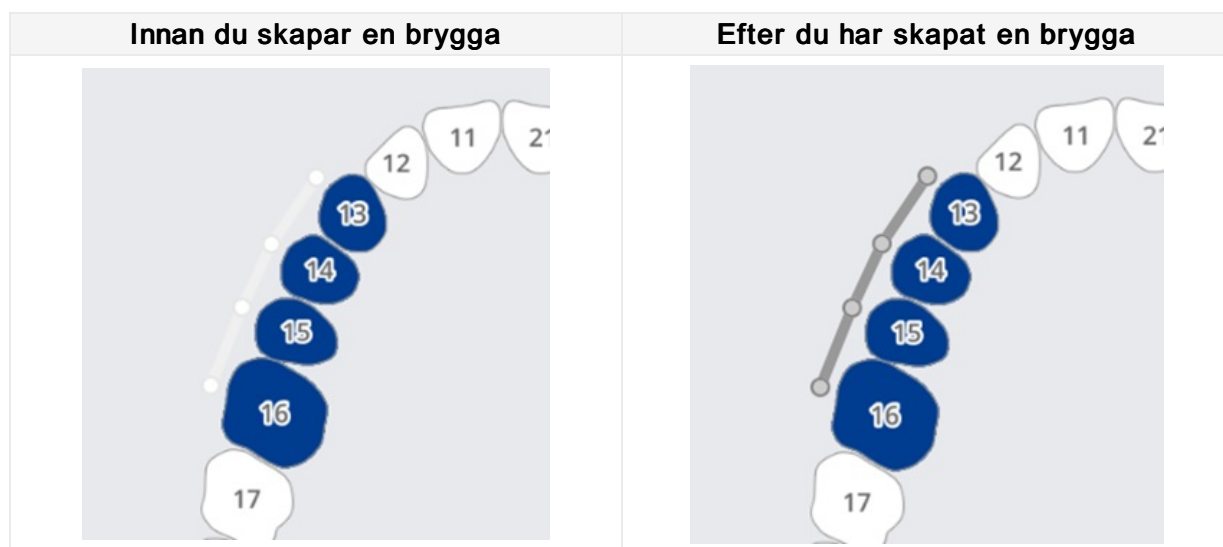

Inställning av skanningsalternativ

Det finns olika skanningsalternativ beroende på vilket program du arbetar med.

De valda skanningsalternativen skickas till varje skanningsprogram.

Medit Scan for Labs

Allmänna alternativ

	Närliggande tänder	Markera preparerade och närliggande tänder och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Antagonist	Markera antagonisten automatiskt och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Artikulator	Visningsalternativ för att välja artikulator i skanningsprogrammet.
	Röreslemarkör	Med denna kan du använda skanningsstrategin "Käkrörelse" i skanningsprogrammet.

Alternativ enligt tänder

	Skanningskropp	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av skanningskroppar i skanningsprogrammet.
	Pre-op-skanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av Pre-Op-modell i skanningsprogrammet.
	Vaxkopieskanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av vaxkopior i skanningsprogrammet.

Lägg till i Favoriter

Lägg till produkter som favoriter för att snabbt kunna välja dem senare.

Listan med favoriter kan hanteras som en mall och delas via export- och importfunktionerna.

Lägg till i Favoriter

1. Välj tandnummer.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Typ – Metod – Material – Nyans kan registreras som favorit även om inte alla är markerade.
3. Klicka på ikonen "Stjärna".

4. En kombination av de valda parametrarna, exklusive tandnummer, läggs till i din favoritlista.

Hantera favoritmallar

Du kan registrera, hantera och dela olika typer av mallar.

Lägg till	Lägg till en ny mall.
Döp om	Döp om den nuvarande mallen.
Radera	Radera den nuvarande mallen.
Exportera	Exportera den nuvarande mallen till en fil.
Importera	Importera en filmall.

Jobba med skanning/CAD

Skanningsprocess

Baserat på inmatad information kan du påbörja skanning.

1. Ange/spara behandlingsinformation och välj nödvändiga skanningsalternativ.
2. Klicka på knappen "Skanna" i fönstrets övre högra hörn.

CAD-process

Medit Link är integrerat med exocad.

CAD	Registrera behandlingsinformation	Bekräftelse av behandlingsinformation	Direkt CAD- utförande	Importera CAD- resultat tillbaka till Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. I Inställningar > Ställ in anslutet program kan du länka det valda CAD-programmet från listan.
2. Ange/spara uppgiftsinformation och designalternativ på CAD-fliken.
3. Klicka på "CAD" i fönstrets övre högra hörn.
4. Det länkade CAD-programmet körs och data skickas automatiskt.
5. Spara resultaten när du har utfört CAD.

iNot

Medit Link för macOS stöder inte funktionen att länka till CAD.

Hämta resultatfiler

Exportera skanningsresultatfiler

Förutom att dela resultat med partners genom beställningar, kan du med Medit Link också lagra dina resultat i önskat filformat med hjälp av exportfunktionen.


Exportera filer till	Anger sökvägen till platsen där du vill lagra resultaten.
Mappnamn	Systemet skapar en ny mapp och lagrar alla resultat i den. Standardnamnet på mappen bestäms av namnregeln. Du kan också ändra mappnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för mappnamn
Filnamn	Ställer in filnamnet för resultatet. Namnregeln anger standardnamnet på filen. Du kan också ändra filnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för filnamn
CAD-typ	Välj det CAD-program som ska användas för ditt designprogram. Medit Link kommer att justera filerna baserat på detta val så att du kan börja designa utan behov av ytterligare axeljustering.
Meshformat	Anger formatet för mesh-filen.
Bildformat	Anger formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera filer	Komprimerar alla resultat till en enda fil.
Kombinera individuell mesh	Kombinerar resultatet av överkäke eller underkäke med en individuell tand. Rekommenderas när det inte går att importera flera filer till ett program.

Exportera alla ocklusiva förhållanden	När skanningsappen skapar flera ocklusionsresultat kan du exportera alla ocklusionsresultat på en gång.
Spara fallinformation som PDF	Spara fallinformationen som en pdf med resultatet.


Exportera valda filer

I Medit Link finns en exportfunktion i expanderingsmenyn i Filvisning. Använd denna för att enkelt exportera valda filer.

1. Klicka på ikonen "Meny" bredvid datagruppen eller en enhet i filvisarens dataträd.
2. Klicka sedan på "Exportera".

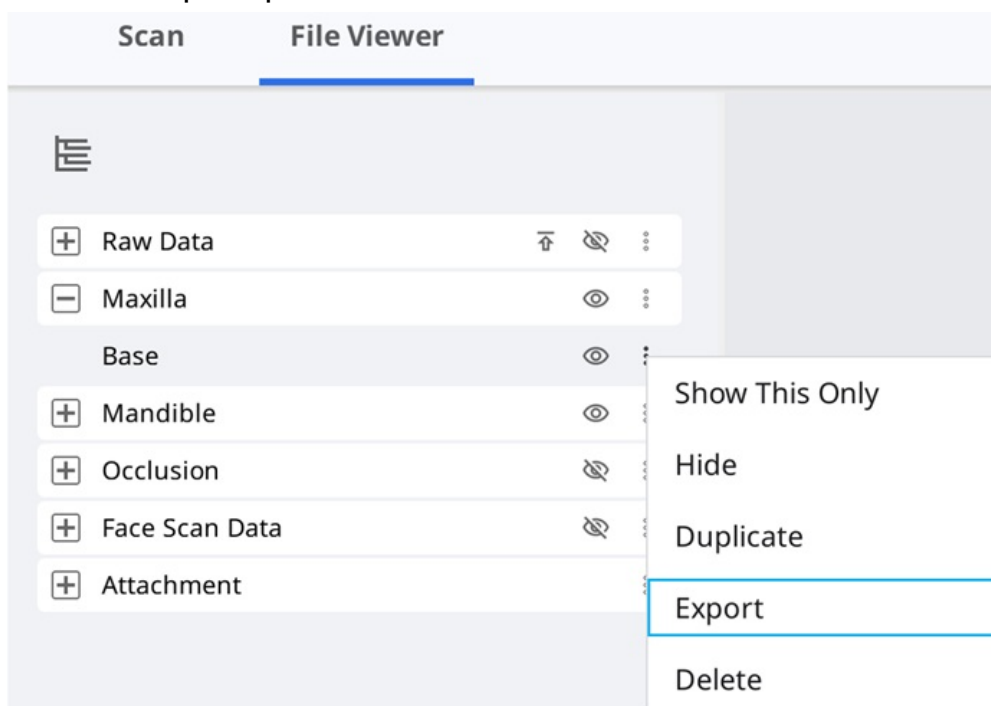

3. Dialogrutan Export visas där endast de filer som du valt att exportera är markerade.

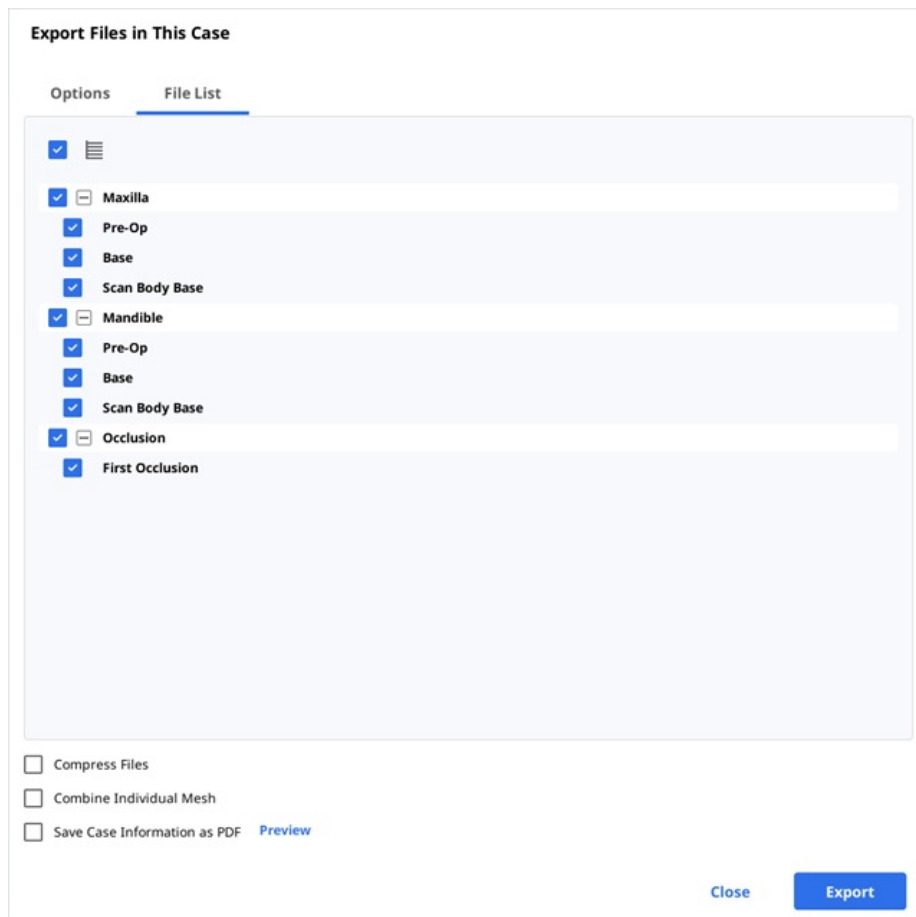

4. Klicka sedan på "Exportera".

Exportera marginallinjen


I Medit Scan for Clinics finns en funktion för att skapa marginallinje. Medit Link kan överföra denna marginallinje till CAD-programmet.

Exportera marginallinjen i färg

I allmänhet konverterar Medit Link marginallinjen i färg och exporterar resultatet tillsammans med överkäke eller underkäke. Du kan använda färginformationen för att skapa marginallinjen i CAD.

Exempel:

Överkäke

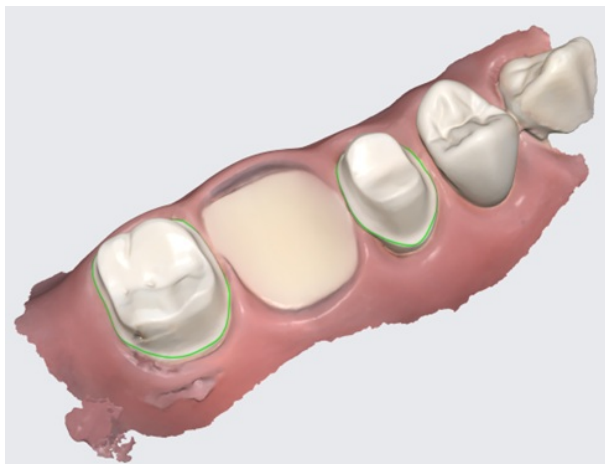

Resultat med marginallinjen i färg

iNot

Denna funktion är tillgänglig för format som innehåller färginformation, som exempelvis meditMesh, OBJ och PLY. Marginallinjen konverteras inte till STL.

iNot

CAD-typ > 3shape stöder inte den här funktionen.


Exportera marginallinjen i färg

För exocad kan Medit Link exportera marginallinjen i formatet "~margin.xyz" så att den kan importeras direkt i exocad.

Du kan använda den här filen i exocad utan justeringar.

Exempel:

Överkäke	Marginallinje
----------	---------------

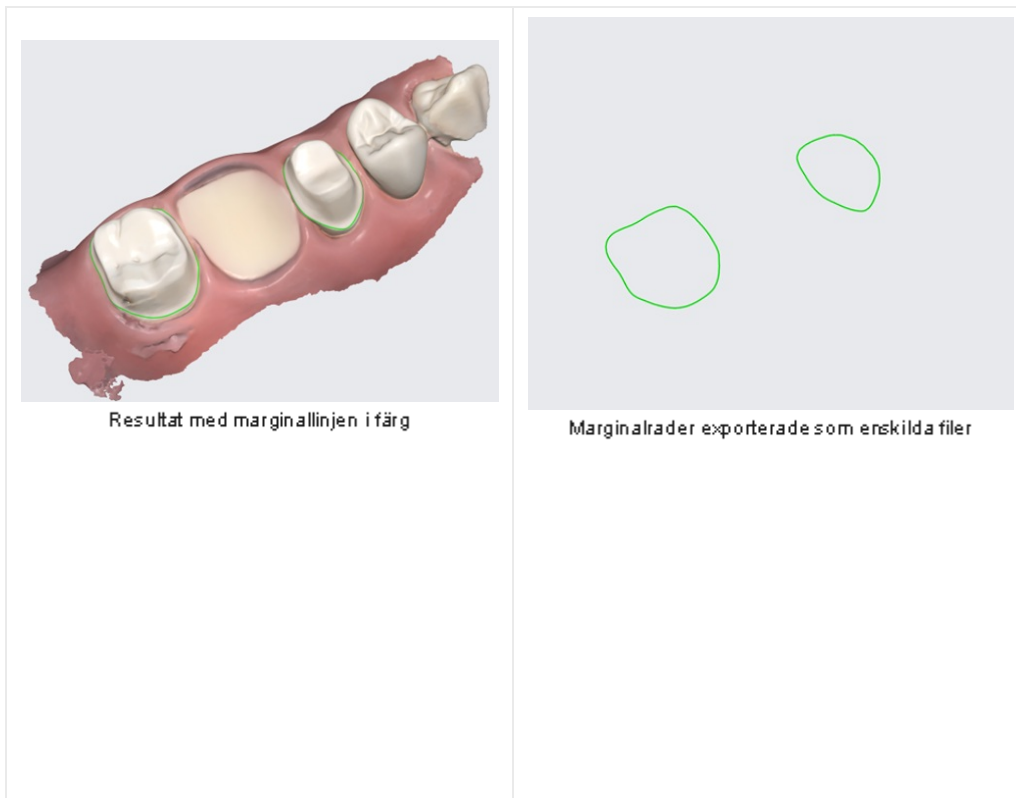

Exportera fallista som CSV

I Medit Link finns en funktion för att exportera fallistan i CSV-format.


Du kan exportera fallistan med grundläggande information för enkel hantering av fall.

Funktionen "Exportera till CSV" finns i följande meny i Medit Link-applikationen.

- In Box
- Work Box

Så exporterar du fallistan

1. Gå till In Box eller Work Box.
2. Välj de fall som du vill exportera.

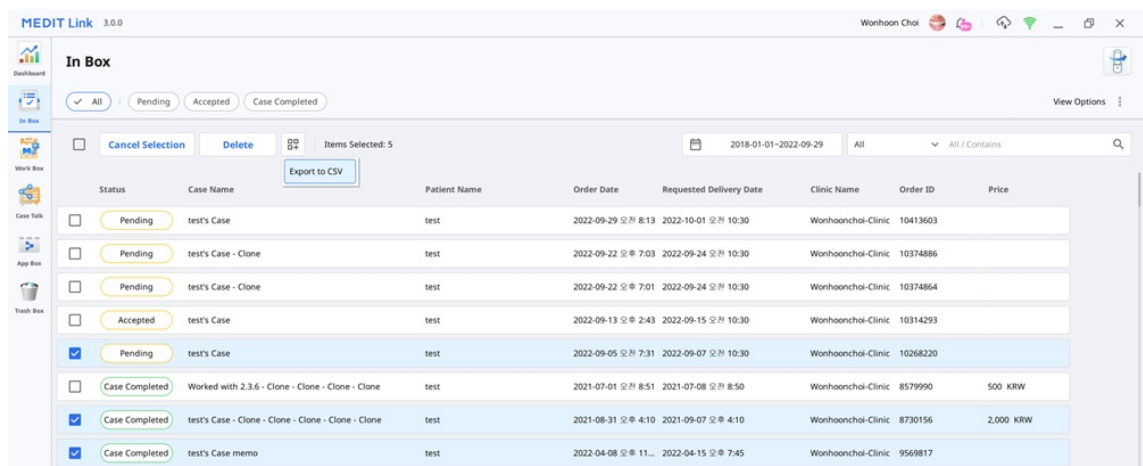

3. Klicka på knappen "Expanderad meny" högst upp för att välja alternativet "Exportera till CSV".



4. Skapa en sökväg och ett filnamn och spara sedan resultaten.

Ladda ner filer från Medit Links webbsida

I Medit Link finns en nedladdningsfunktion.

Om du vill hämta resultatfilerna utan att installera Medit Link-applikationen kan du ladda ner filerna från Medit Links webbsida.

iNot


Data måste vara uppladdade i Medit Cloud för att filerna ska kunna laddas ned från webbsidan.

Nedladdningsfunktionen finns i följande meny på Medit Links webbsida.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Du hittar knappen "Ladda ner" längst upp till höger.

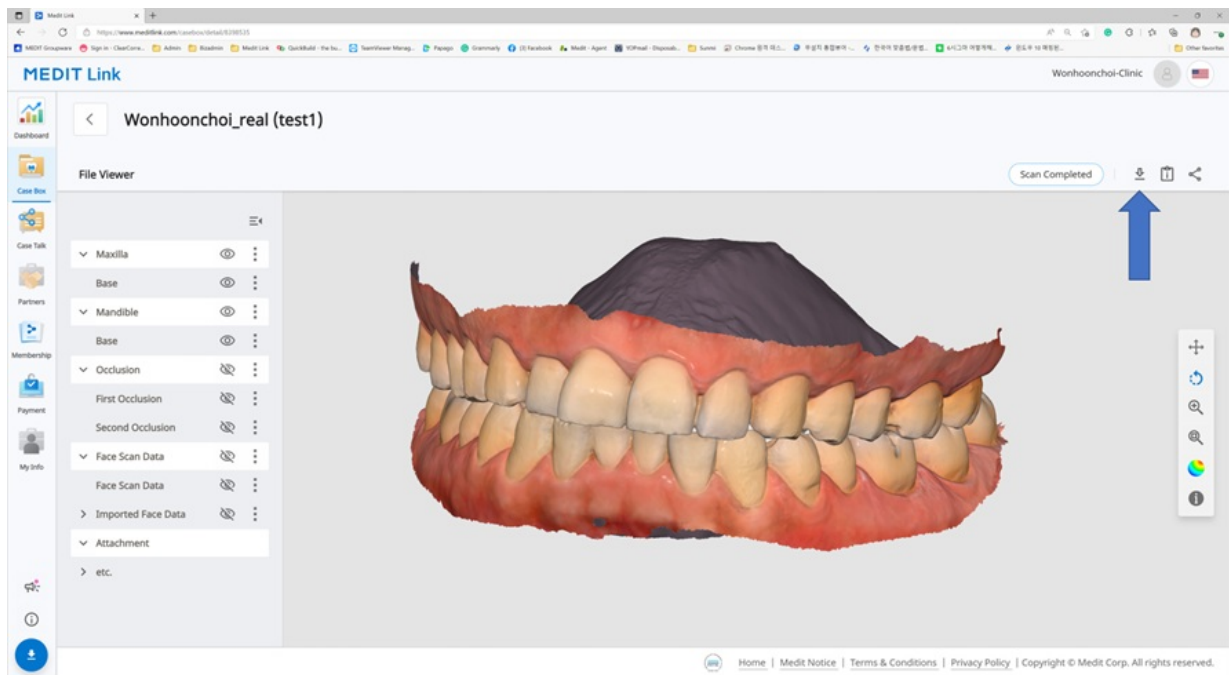

Web Viewer

När du delar ett fall via Case Talk kan du ställa in om du vill tillåta nedladdning eller inte.

Om du markerar "Ge nedladdningstillstånd" och delar ett fall kan alla användare som ansluter till den delade länken ladda ner filerna.

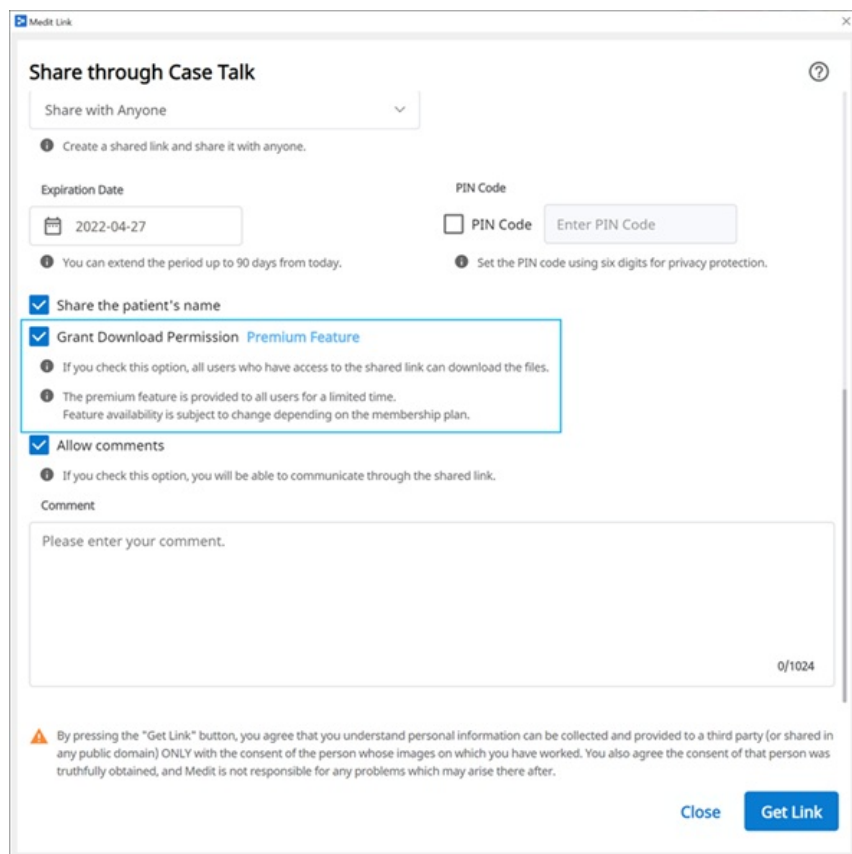

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

I Web Viewer hittar du ikonen "Ladda ner" uppe till höger.

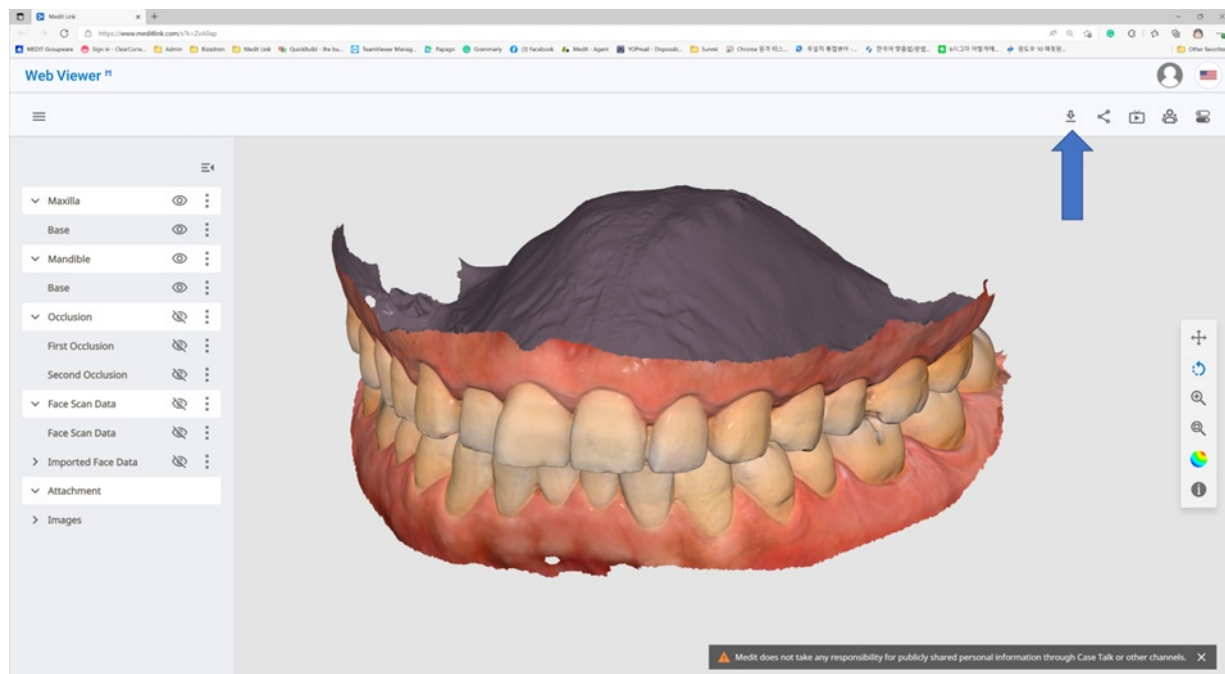

Så laddar du ner

1. Klicka på "Ladda ner".



2. Välj meshformat i nedladdningsdialogrutan.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) **OK**

3. Klicka sedan på "OK".

Beställ/Hantera fall

Du kan enkelt beställa ett fall med data inhämtade från anslutna program och bifogade användardata.

Beställa fall

Du kan lägga en beställning till dina partners i Case Box.

1. Klicka på knappen "Beställ".
2. Kontrollera vilken information som krävs för din beställning.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Välj partner.
4. Kontrollera produktinformationen på fliken Beställningslista.
 - Bestäm om du vill dela patientens namn.
5. Kontrollera vilka filer du ska beställa på fliken Fillista.
6. Ange önskat leveransdatum.
 - Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
7. Du kan lägga till ett memo och taggar till din partner för att beskriva specifika detaljer.
8. När flera ocklusionsresultat genereras från skanningsappen kan du skicka alla ocklusionsresultat på en gång genom att markera "Ordna alla ocklusiva förhållanden".
9. Lagg din beställning.
 - **Hoppa över betalning:** Skapa beställningen utan att använda betalningssystemet som tillhandahålls av Medit Link. Tillgängligt vid beställning från en partner med statusen "Kontrakt".
 - **Betala:** Använd betalningssystemet som tillhandahålls av Medit Link för att skapa beställningen. Tillgängligt vid beställning från avtalspartner.
 - **OK:** Skapa beställningen utan några villkor angående produktens pris. Tillgängligt vid beställning från en partner med statusen "Partnerskap".

iNot

Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Hoppa över betalning
- Betala

Bekräfta beställning (In Box)

- Acceptera beställning vid emottagande.
- Accepterade beställningar vidarebefordras till Work Box.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Avbryt beställning (Order Box)

- Du kan avbryta en beställning innan din partner accepterar den.
- Det går att göra en ombeställning på avbrutna fall.

test's Case (test)

Order File Viewer

Cancel

Pending

Avvisa beställning (In Box)

- Du kan avvisa en mottagen beställning.
- Det går att göra en ombeställning på avvisade fall.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Kontrollera beställda fall

Du kan kontrollera detaljerna för fall som du beställt i Order Box på klinikkontot. Du kan också kontrollera fall som du tagit emot i In Box på labbkontot.

MEDIT Link 3.1.0

wonhoonchoi_Lab3

test's Case / wonhoonchoi Beta

Reject Confirm Order

Pending

Order ID: S718975

Order Date: 2020-11-10 06:18

Requested Delivery Date: 2020-11-24 06:15

Expected Delivery Date: 2020-11-24 06:15

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Beställningsinformation	De uppgifter som kan ingå i beställningen är följande: Beställnings-ID/patientens namn/namn på konto/skanningsdatum/beställningsdatum/leveransens förfallodatum/memo. Du kan kontrollera detaljerna för den beställda produkten och leveransinformation.
Beställningslista	Beställningslistan visar detaljerna för den beställda produkten.
Frakt	Ange/kontrollera fraktinformationen.

Ange fraktinformation (In Box)

Ange fraktoppgifter för det slutförda fallet och påbörja frakt.

1. Klicka på fliken "Frakt".
2. Ange fraktoppgifter och klicka på "Registrera".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Den angivna informationen skickas till din partner.

Hantera leveransdatum

Du kan ställa in önskat leveransdatum när du gör en beställning. Denna information kommer att vidarebefordras till din partner.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Vid beställning i Case Box kan du ange önskat leveransdatum.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
- Ange datum/tid för då du vill ta emot produkterna och skapa beställningen.
- Du kan enkelt ställa in tiden med skjutreglaget.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Ange önskat leveransdatum för fall du beställer i In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01
오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01
오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Verifiera det begärda leveransdatumet med partnern, du kan boka om med knappen "Redigera".



2. Ange förväntat leveransdatum med hänsyn till faktiska arbetsdagar. Vid behov kan du också lämna en kommentar.
3. Klicka på "Tillämpa".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Önskat leveransdatum och memo skickas tillsammans med beställningen.
 - Du kan kontrollera datum och anteckningar i Order Box.
 - Du kan ändra det förväntade leveransdatumet. Ändringarna kommer att vidarebefordras till din partner.
5. Du kan kontrollera fallhistoriken med knappen "Historik".



Slutföra fall

Slutfört (Work Box/In Box)


När alla uppgifter är klara, klicka på "Klar" för att slutföra fallet.

Slutför ett fall i falldetaljer

Du hittar knappen "Meny" höger om knappen Öppna.



Slutför arbetet genom att klicka på ikonerna "Meny" och välja "Done".

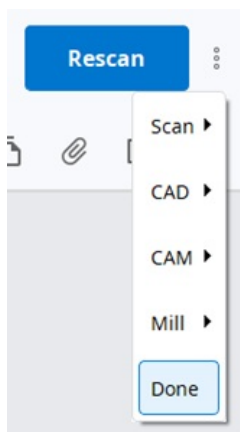


Slutför flera fall i fallistan

När du väljer fall i Work Box visas en knapp för expanderad meny högst upp i listan.



Slutför flera ärenden enligt följande:

1. Gå till Work Box.
2. Välj alla fall som du vill slutföra.

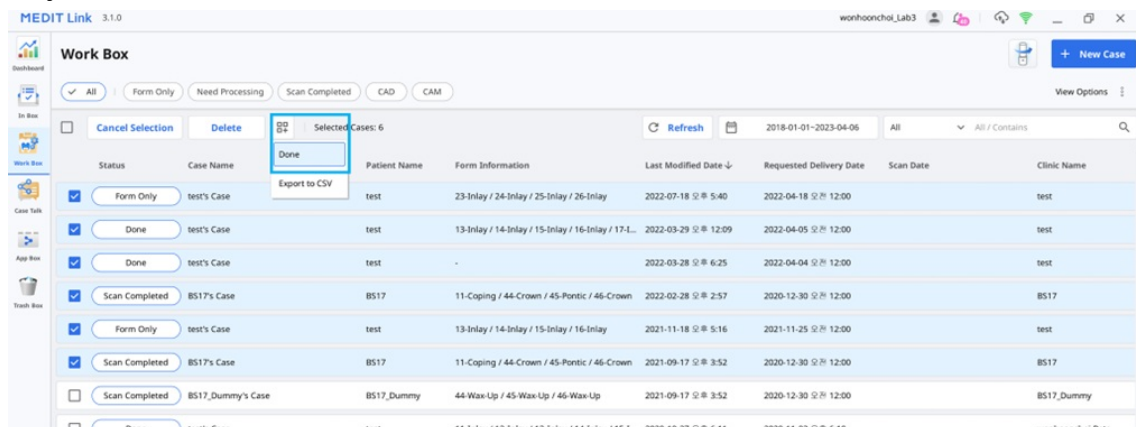

3. Klicka på den ovan nämnda knappen "Expanderad meny".




4. Välj "Done" i listan

Slutfört (Case Box/Order Box)

När fallet har slutförts på labbet måste kliniken bekräfta fallet för att slutföra hela beställningsprocessen.

När labbet slutfört sitt arbete kan kliniken hitta funktionen "Bekräfta leverans" i Order Box.


Klicka på denna för att slutföra hela beställningsprocessen och så att fallstatusen ändras till "Case Completed".

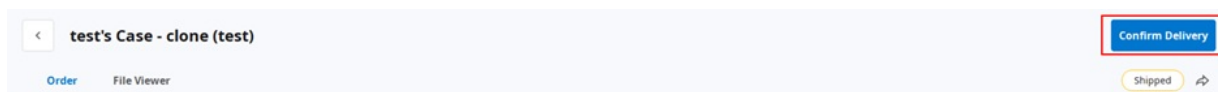

Slutför att fall som inte beställts i Case Box

Fall som inte beställts av labbet kan du slutföra i Case Box.

1. Gå till Case Box.
2. Välj fall som ska slutföras.

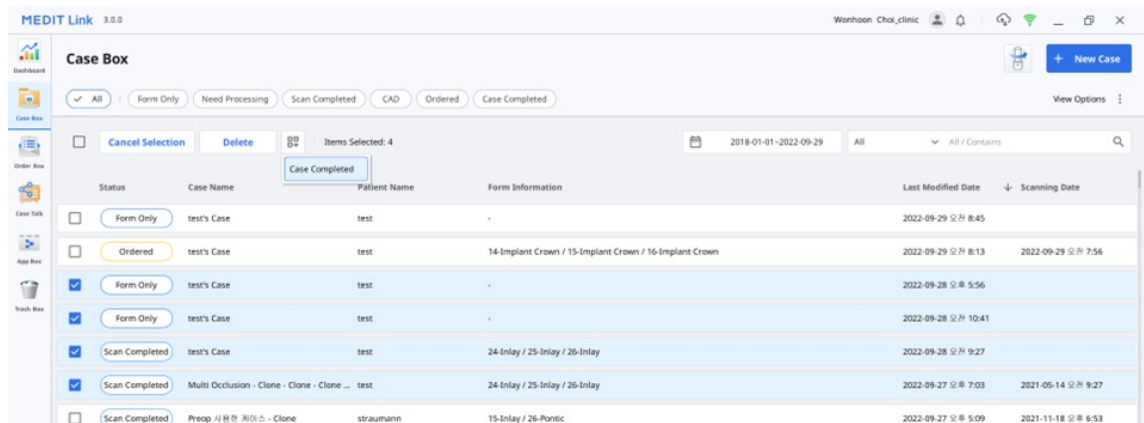

3. Klicka på knappen "Expanderad meny".



4. Välj "Case Completed".

Kommunicera med hjälp av taggar

Du kan lägga till ytterligare information för ditt fall med hjälp av taggar och skicka dem till dina partners.

Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall

Du kan ange taggar när du skapar ett nytt fall eller redigerar fallinformation.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Du kan enkelt söka och välja taggar som du har använt tidigare.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Lägg till taggar vid beställning

Du kan kontrollera och redigera taggar i dialogrutan Beställning när du lägger en beställning.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Kontrollera taggar på Falldetaljer

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Edit

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

