

USER GUIDE

Medit Link

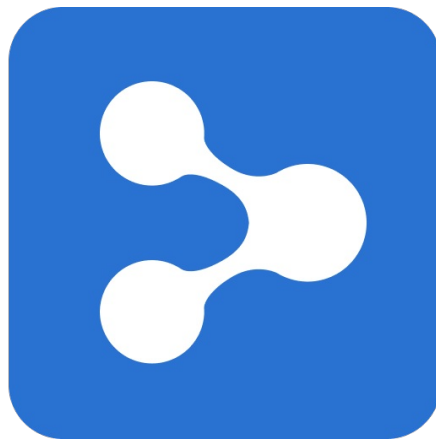


Table of Contents

Medit Link

Introducción	6
Medit Link	6
Visión general del servicio	6
Servicio en la nube	7
Plataforma de gestión de flujos de trabajo con sistema de pedidos	7

Medit Link > Instalación

Requisitos del sistema	8
Requisitos del sistema para Windows	8
Requisitos del sistema para macOS	8
Requisitos del sistema para el servicio web	8
Recomendado para navegadores	8
Mínimo para dispositivos móviles	8
Instalación en Windows	9
Instalación en macOS	11
Medit Link se instala como un paquete con Medit Scan for Clinics.	11

Medit Link > Medit Link Web

Vista general	15
Dashboard	16
Vista general de Dashboard	16
Medit Insights	16
Suscribirse a Medit Insights	17
Cancelar suscripción a Medit Insights	18
Case Box/Work Box	19
Filtrado de casos	19
Filtrar por estado	19
Filtrar por duración	19
Filtrar por búsqueda	20
Detalles del caso	20
Order Box/In Box	22
Detalles del pedido	22
Pestañas en Order Box/In Box	22
Case Talk	23
Creando un Case Talk	23
Establecer el tipo de permiso y las opciones de uso compartido	24
Detalles del Case Talk	26
Visualizador web	27
Anotación	28
Comentarios	28
Compartir la pantalla en tiempo real	29
Árbol de datos	29
Controles del árbol de datos	29
Control de modelos 3D	30
Socios	32
Buscar socios	32
Mi lista de socios	32
Invitación a los socios	33
Membresía	34
Membership	34
Mi plan	34

Almacenamiento en la nube	35
Suscribirse	36
Anular suscripción	38
Información de facturación	39
Cómo añadir un método de pago	40
Cómo cambiar un método de pago	42
Canjear	43
Registrar código de canje	43
Activar el código de canje	44
Pago	46
Datos de pago (cuentas Clinic & Lab)	46
Información de la cuenta de pago (sólo cuenta Lab)	46
Mi información	47
Mi cuenta	47
Mi organización (sólo cuenta de administrador)	47
Mi escáner	48
Mi lista de precios (solo cuenta de administrador Lab)	48
Otro menú	49
Noticias & Actualizaciones	49
Información Medit	49
Descargar la App de Medit Link	49

Medit Link > Medit Link App

Vista general	51
Caja de resumen	51
Barra de título	53
Notificaciones	53
Administrador de la sincronización de casos	54
Subir	55
Descargar	55
Estado de la red	56
Menú	57
Dashborad	57
Case Box/Work Box	57
Pestañas en Case Box/Work Box	58
Funciones en Case Box/Work Box	58
Order Box/In Box	59
Pestañas en Order Box/In Box	60
Case Talk	60
App Box	61
Trash Box	61
Configuración	62
Gestión de los pacientes	62
Añadir nuevo paciente	62
Eliminar paciente	63
Fusionar pacientes	63
Noticias & Actualizaciones	64
Ir a Medit Link web	64
Información Medit	64
Configuración	66
General	66
Gestionar Almacenamiento	67
Escoger periodo	67
Almacenamiento local	67
Almacenamiento en la nube	68
Establecer Programa Conectado	68

Opciones Exportar	69
Herramienta de conversión de casos	70
Cómo utilizar la herramienta de conversión de casos	70
Opción de Proxy	72
Acerca de	72
Guía de usuario	73
Visor de archivos	74
Árbol de datos	74
Herramientas de control de modelos	74
Control de modelos 3D	74
Control de imágenes 2D	75
Herramientas de función	76
Captura de imagen y notas	76
Captura de ortodoncia	76
Rellenar agujeros	77
Recortar	77
Optimizar la alineación de la oclusión	80
Movimiento mandibular	81
Gestionar los datos de oclusión múltiple en el visor de archivos	82
Cómo gestionar los resultados múltiples	82
Opciones de visualización	84
Filtros de estado	84
Elementos de la tabla	85
Tipo de vista	86
Vista en galería	87
Vista de lista	88
Agrupar	88
Ordenar	89
Filtrado y búsqueda	91
Filtrar por fecha	91
Capacidades de búsqueda avanzada	91

Medit Link > Flujo de trabajo

Crear/Editar/Clonar/Borrar caso	93
Crear casos	93
Crear casos en la Case Box (Clinic)	93
Crear casos en la Work Box (Lab)	94
Edición de casos	94
Editar casos en la Case Box (Clinic)	94
Editar casos en la Work Box (Lab)	95
Clonar casos	96
Clonar casos en la Case Box (Clinic)	96
Clonar casos en la Work Box (Lab)	96
Eliminar caso	96
Eliminar caso (Clinic y Lab)	97
Información del formulario	98
Registro de la información del formulario en la Case Box	98
Entrar en la pestaña Formulario	98
Entrar en la pestaña CAD	98
Registro de la información del formulario en la Work Box	98
Entrar en la pestaña Formulario	98
Entrar en la pestaña CAD	99
Conexión de los dientes en el puente	99
Configuración de las opciones de escaneo	99
Medit Scan for Labs	99
Opciones generales	99

Opciones por dientes	100
Añadir a favoritos	100
Añadir a Favoritos	100
Gestionar plantillas favoritas	100
Trabajo de escaneo/CAD	101
Proceso de escaneo	101
Proceso CAD	101
Obtener archivos de resultados	102
Exportar archivos de resultados de escaneo	102
Exportar archivos seleccionados	103
Exportar línea de margen	104
Exportar línea de margen como color	104
Exportar línea de margen como archivo	105
Exportar lista de casos como CSV	106
Cómo exportar la lista de casos	106
Descargar archivos de Medit Link Web	107
Case Box/Work Box	107
Visualizador web	107
Cómo descargar	108
Pedir/Gestionar casos	110
Puede pedir fácilmente un caso con los datos adquiridos de los programas conectados y los datos adjuntados por el usuario.	110
Pedir casos	110
Confirmar pedido (In Box)	111
Cancelar Pedido (Order Box)	111
Rechazar Pedido (In Box)	111
Comprobación de los casos pedidos	111
Introducir información sobre el envío (In Box)	112
Gestión de la fecha de entrega	112
Establecer la fecha de entrega solicitada (cuenta clinic)	112
Completando casos	114
Competar (Work Box/In Box)	114
Complete un caso desde el detalle del caso	114
Complete los múltiples casos de la lista de casos	115
Completar (Case Box/Order Box)	115
Completar un caso no pedido en la Case Box	115
Comunicar mediante etiquetas	117
Añadir etiquetas al crear un nuevo caso	117
Añadir etiquetas al hacer el pedido	118
Comprobar etiquetas en los detalles del caso	118

Introducción

Medit Link

Medit Link es una herramienta de colaboración diseñada para facilitar la comunicación entre clínicas y laboratorios con el fin de proporcionar un flujo de trabajo optimizado para cada una de las partes.

Ofrece funciones diferenciadas en función del tipo y los permisos de cada cuenta. El programa ofrece una interfaz de usuario fácil de usar para gestionar el flujo de trabajo, desde el escaneo con escáneres orales y de modelos, el pedido de casos y el diseño y la producción de prótesis.

Medit Link consta de un servicio web y una aplicación informática.

Visión general del servicio

		Web	App
		• Registrar y gestionar la cuenta • Buscar • Buscar y gestionar socios • Compartir casos a través de Web Viewer con un enlace compatible • Acceder a los casos creados desde la App • Gestionar pedidos	• Introducir la información del formulario • Escanear • Hacer/recibir pedidos y hacer pagos • Enlazar con CAD • Gestionar pacientes
Clinic	Administrador	Buscar y gestionar socios y su organización, gestionar la información de pago y compartir casos. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - Pago - Mi información	Introducir información del formulario, escanear, enlazar con CAD, hacer pedidos, hacer pagos, y gestionar pacientes. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Gestión de pacientes
	Miembro	- Case Box - Case Talk - Mi información	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Lab	Administrador	Buscar y gestionar socios y su organización, gestionar la información de pago y compartir casos. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Payment - Membership - Payment - Mi información	Introducir información de formularios, escanear, enlazar con CAD y recibir/gestionar pedidos. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

	Miembro	- Work Box - Case Talk - Mi información	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
--	---------	---	---

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Pago

Servicio en la nube

Medit Link es compatible con la carga/descarga automática de bases de datos y archivos a través de AWS (Amazon Web Services).

Los datos almacenados en la nube se sincronizan automáticamente con los ordenadores de varios usuarios de la organización para que puedan acceder a los mismos datos desde cualquier ordenador y en cualquier momento. La copia de seguridad y la recuperación basadas en la nube mantienen a salvo todos sus datos. Mantiene sus datos seguros incluso en caso de pérdida de datos debido a un fallo repentino del ordenador.

El servicio en la nube permite a los dentistas y laboratorios asociados compartir datos rápidamente sin la molestia de enviar por correo electrónico o transferir manualmente los escaneos. Todos los datos, incluida la información del paciente, se cifran, almacenan y transmiten de forma segura. Medit cumple con las leyes y regulaciones médicas como HIPAA y GDPR.

Plataforma de gestión de flujos de trabajo con sistema de pedidos

Medit Link ofrece su propio sistema de pedidos y pagos.

- Medit Link permite crear contratos entre dentistas y laboratorios dentales y compartir datos de forma rápida y sencilla.
- Puede comprobar y gestionar el estado del pedido.

El sistema respaldado por tarjetas de crédito funciona con los módulos de pago de las plataformas de pago en línea, como Stripe (www.stripe.com) y I'mPort (<http://www.iampor.kr>), lo que hace que los servicios de pago sean fáciles y cómodos.

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Pago

Requisitos del sistema

¡Nota

Consulte los requisitos del sistema para Medit Scan for Clinics y Medit Scan for Labs si desea utilizar el software de escaneo con su escáner.

Requisitos del sistema para Windows

	Portátil & Escritorio
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz or superior
RAM	16 GB o superior
Gráfica	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) o superior / o tarjeta de vídeo AMD equivalente
SO	Windows 8 64 Bit (no disponible en 32 Bit) o superior

Requisitos del sistema para macOS

	Mac
Procesador	M1 con 8 núcleos, GPU de 7 núcleos y Neural engine de 16 núcleos
RAM	16 GB o superior
SO	Monterey 12

Requisitos del sistema para el servicio web

Recomendado para navegadores

	Navegadores
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Mínimo para dispositivos móviles

Tipo	Android	iOS
Dispositivo	Galaxy S7 equivalente o superior	iPhone 7 equivalente o superior
SO	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB o superior	2 GB o superior
AP	Superior a Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalación en Windows

Medit Link se instala como un paquete con programas de adquisición de escáneres: Medit Scan for Clinics y Medit Scan for Labs.


1. Ejecute Medit_LinkSetup.exe.
2. Seleccione un idioma para la instalación.
3. Seleccione la carpeta para instalar Medit Link. Por favor, lea y acepte los términos y condiciones de la licencia y haga clic en "INSTALAR".

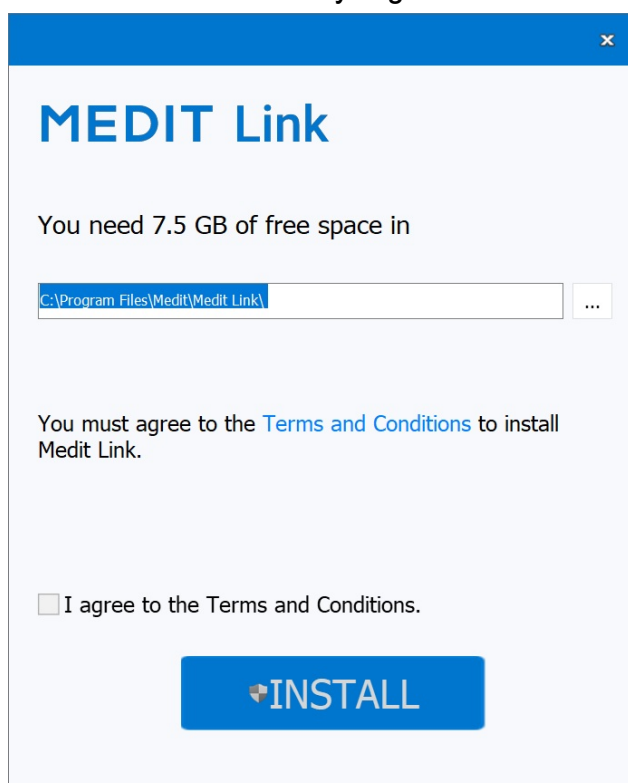

4. Asegúrese de que el cable del escáner está desconectado del ordenador antes de proceder al siguiente paso. Es posible que la instalación no se realice si el escáner está conectado a su PC.
5. El programa se instalará automáticamente y puede tardar unos minutos. No apague o desconecte el PC hasta que finalice la instalación.

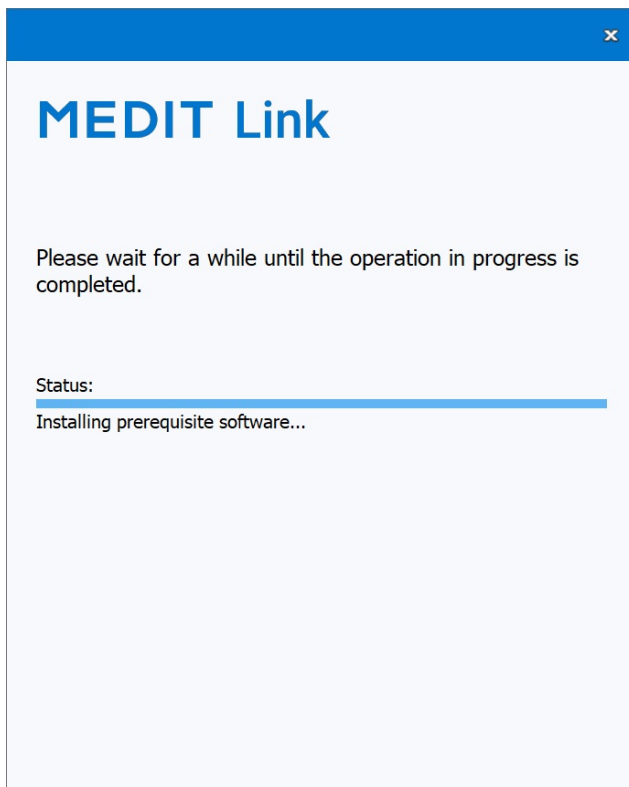

6. Reinicie su PC una vez finalizada la instalación. Puede proceder sin reiniciar el PC si no dispone del escáner.

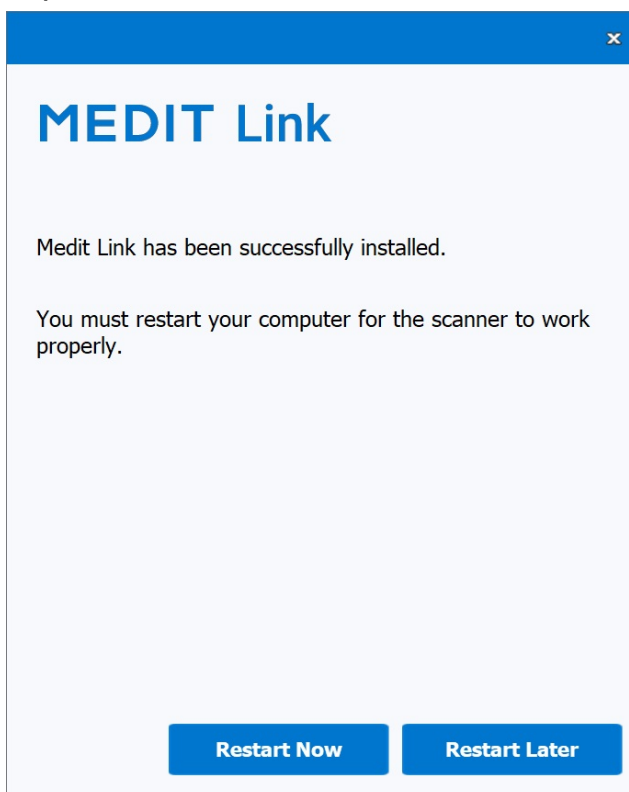


iNota

Si no reinicia el PC una vez finalizada la instalación, es posible que el escáner no funcione correctamente.


Instalación en macOS

Medit Link se instala como un paquete con Medit Scan for Clinics.


1. Ejecute Medit_Link_x.x.x.pkg y haga clic en "Continuar".

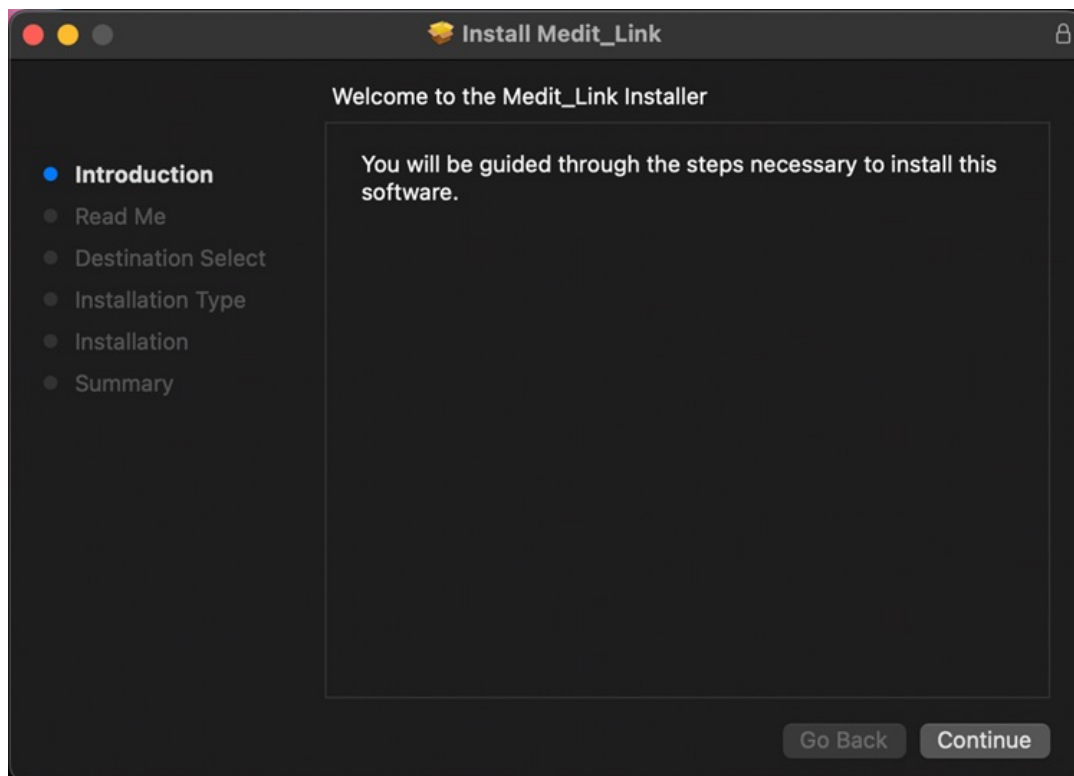


2. Lea el Acuerdo de licencia de usuario final y haga clic en "Continuar".

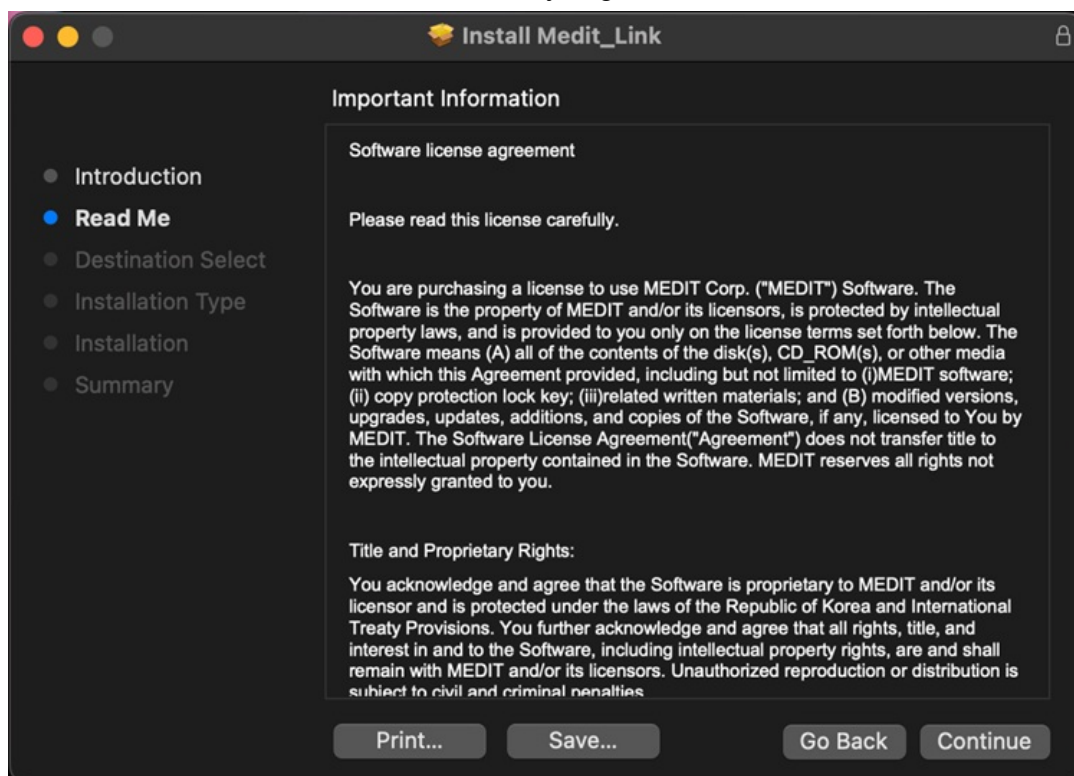

3. Seleccione el disco a instalar y haga clic en "Continuar".

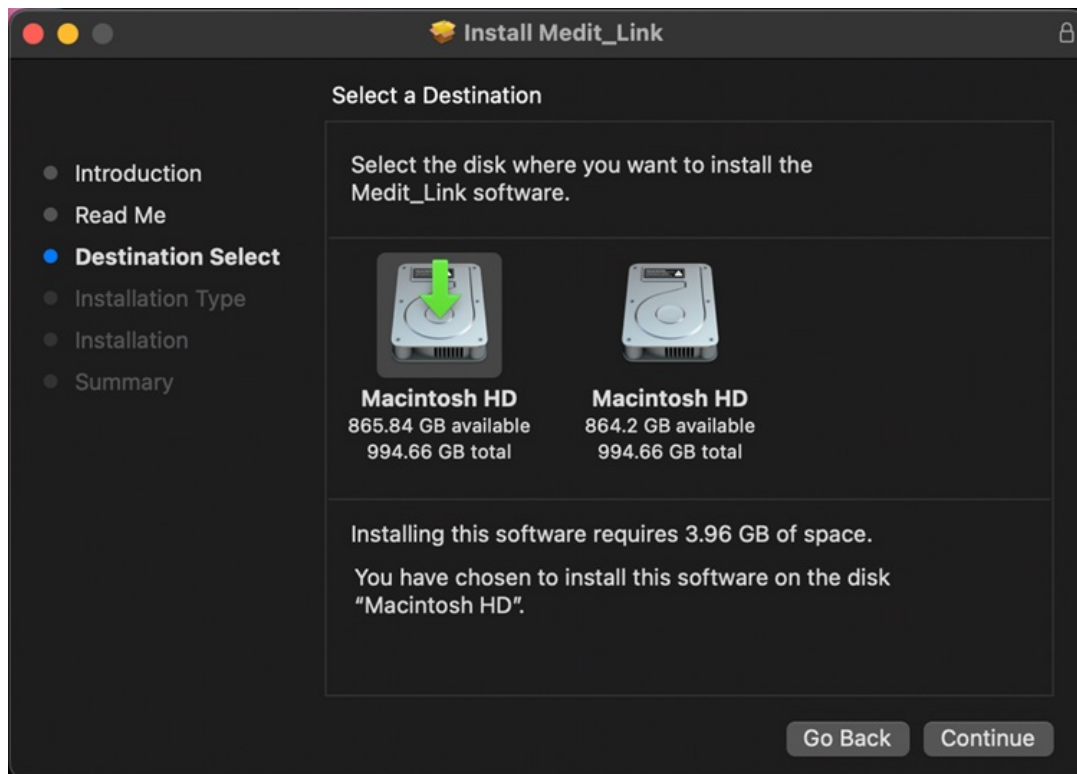


4. Haga clic en "Cambiar ubicación de instalación..." para cambiar el destino de la instalación.

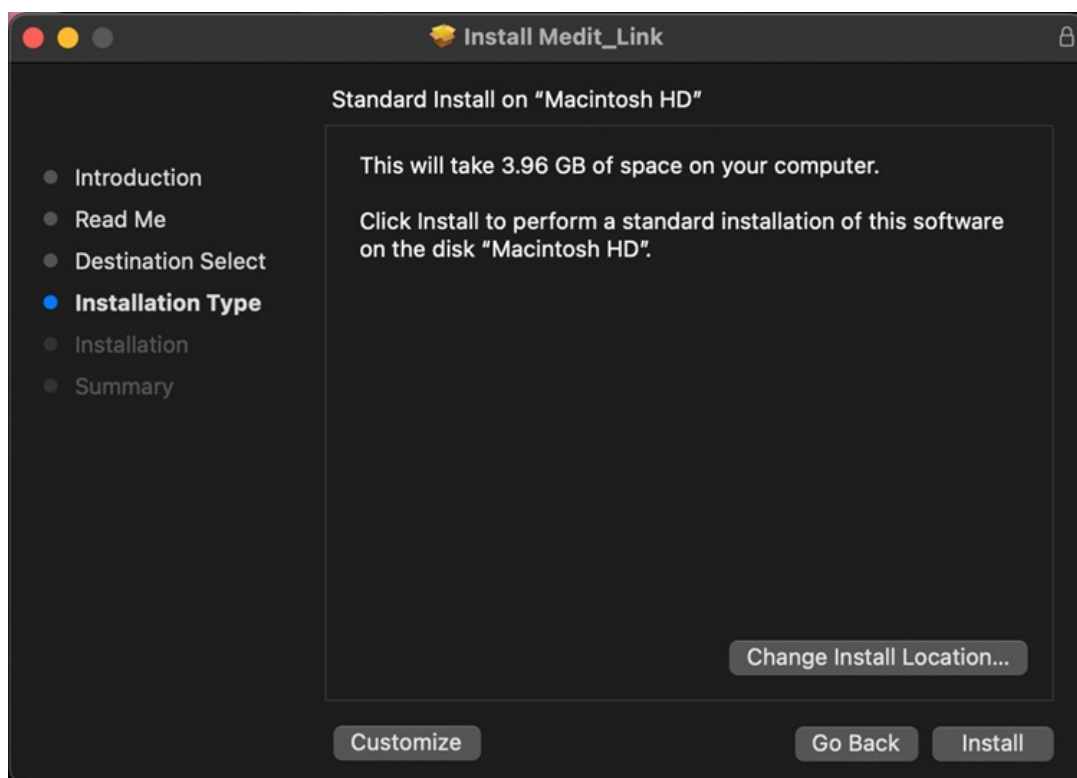


5. Haga clic en "Instalar" e introduzca la contraseña de su Mac para permitir la instalación si se le solicita.



6. Espere a que finalice la instalación.

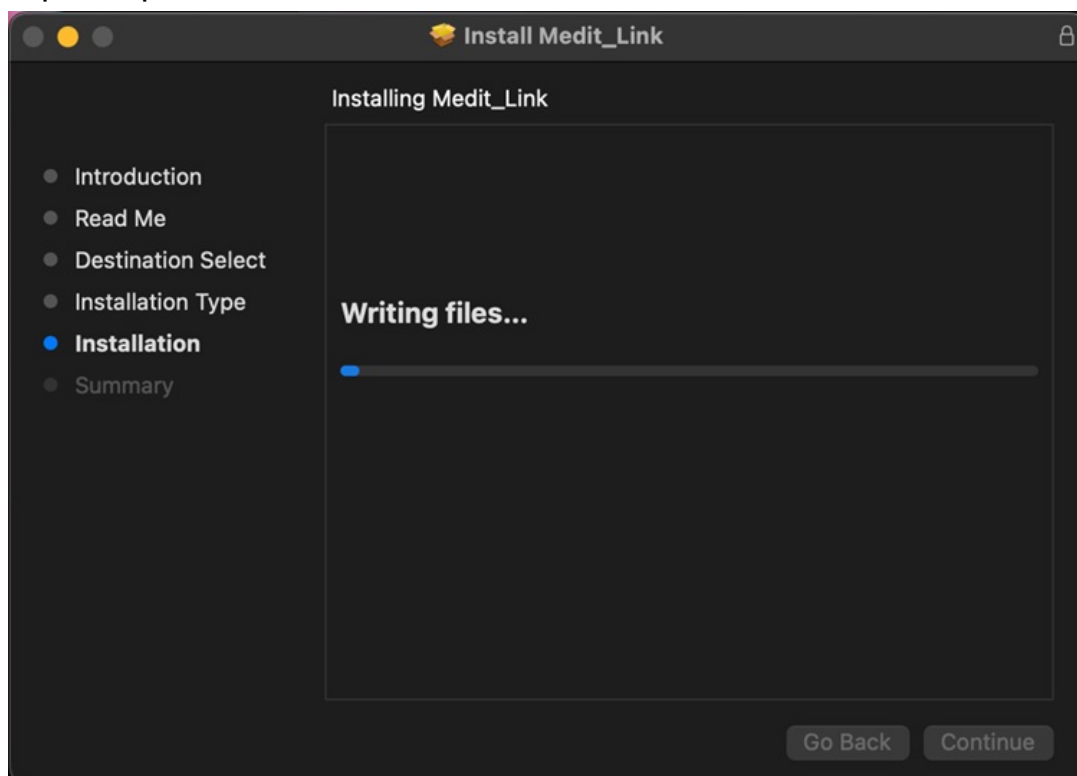

7. Haga clic en "Cerrar" para salir de la ventana de instalación.

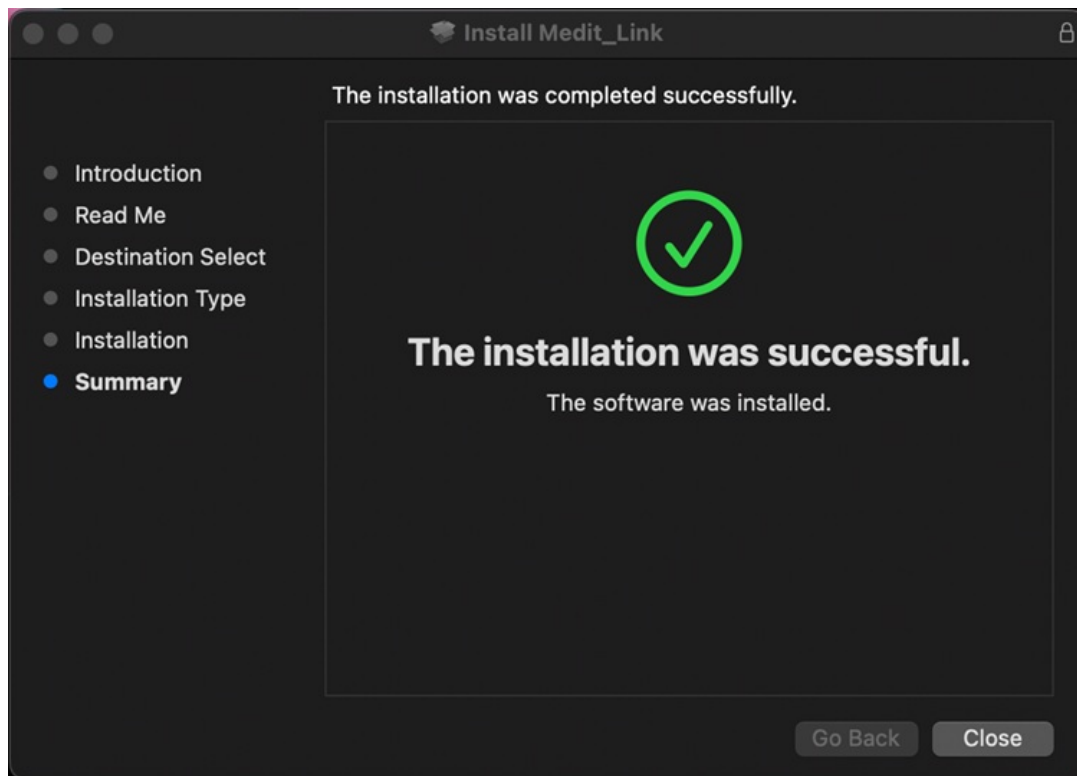

Vista general

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

MEDIT Link

Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세게... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열거함?

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. wonhoon choi

Case Box

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

View Options

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06 Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

1 2

Dashboard

Vista general de Dashboard

Puede ver las estadísticas de todo el trabajo realizado en Medit Link en gráficos y tablas visualizadas, tanto en la aplicación Medit Link como en la web.

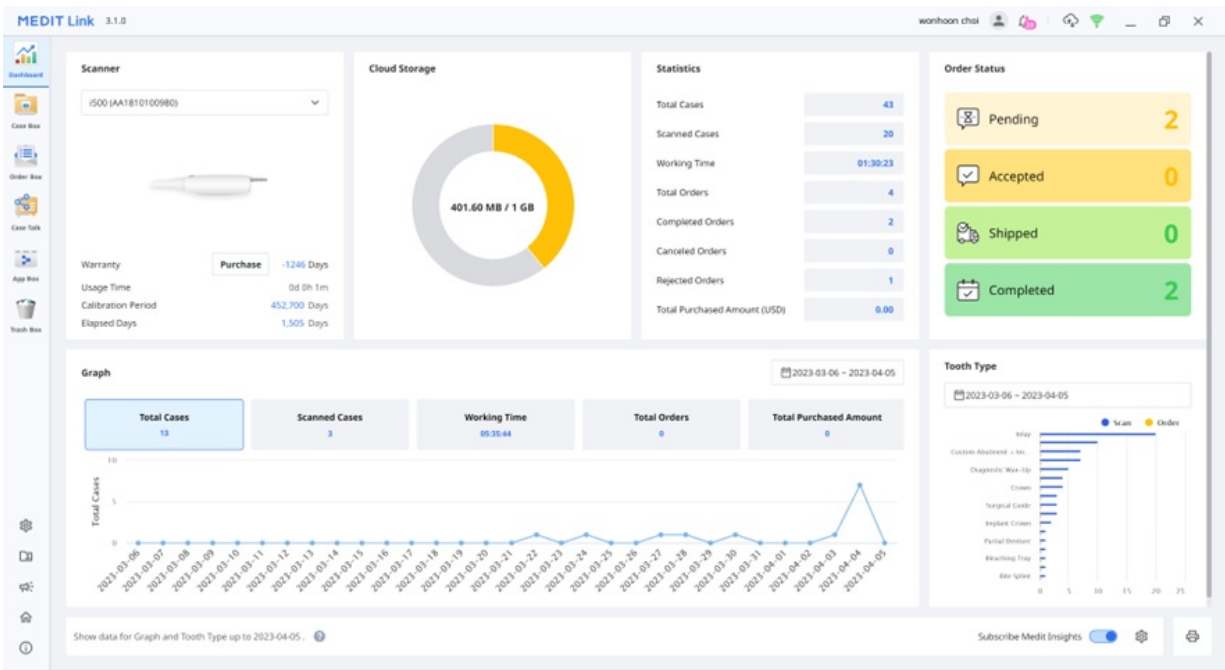

Los gráficos y cuadros del panel de control muestran estadísticas de todo el trabajo realizado en Medit Link.

Escáner	Proporciona información sobre los escáneres activos, incluida la garantía, el tiempo de uso del escáner, el intervalo de calibración y el tiempo transcurrido de calibración.
Almacenamiento en la nube	Muestra la capacidad total de la nube y la cantidad en uso.
Estadísticas	Proporciona estadísticas sobre los casos en función del estado del trabajo.
Estado del pedido	Proporciona estadísticas sobre los casos en función del estado del pedido.
Gráfico	Gráfico de la información de los puestos de trabajo por período.
Tipo de diente	Proporciona estadísticas sobre el número de escaneos y pedidos por información de tratamiento.


Medit Insights

Medit Insights es un servicio de informes que le ayuda a analizar sus estadísticas de uso.

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Medit Insights

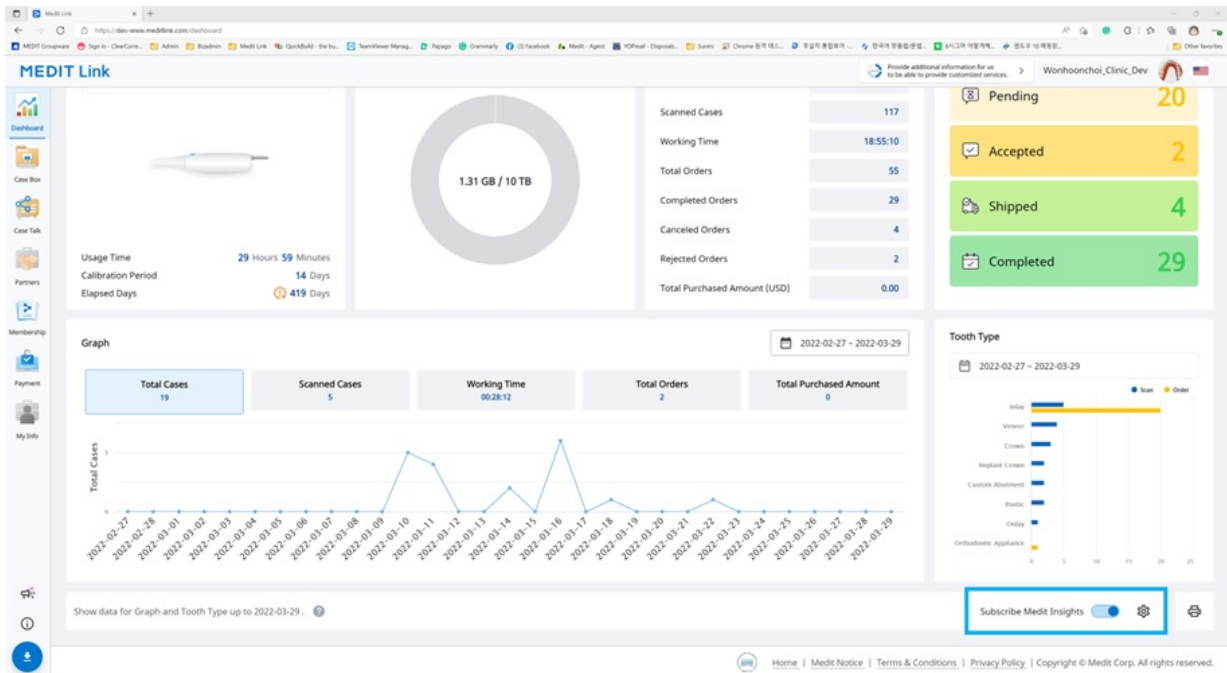

Suscribirse a Medit Insights

El segundo día de cada mes puede recibir un informe por correo electrónico. No es necesario ningún proceso de registro adicional. Sólo tiene que activar "Suscribirse a Medit Insights".

Si no utiliza la dirección de correo electrónico que utilizó para la cuenta Medit Link, puede configurar otra dirección de correo electrónico para recibir Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

El día 2 de cada mes, recibirá un correo electrónico con las estadísticas que se muestran a continuación.

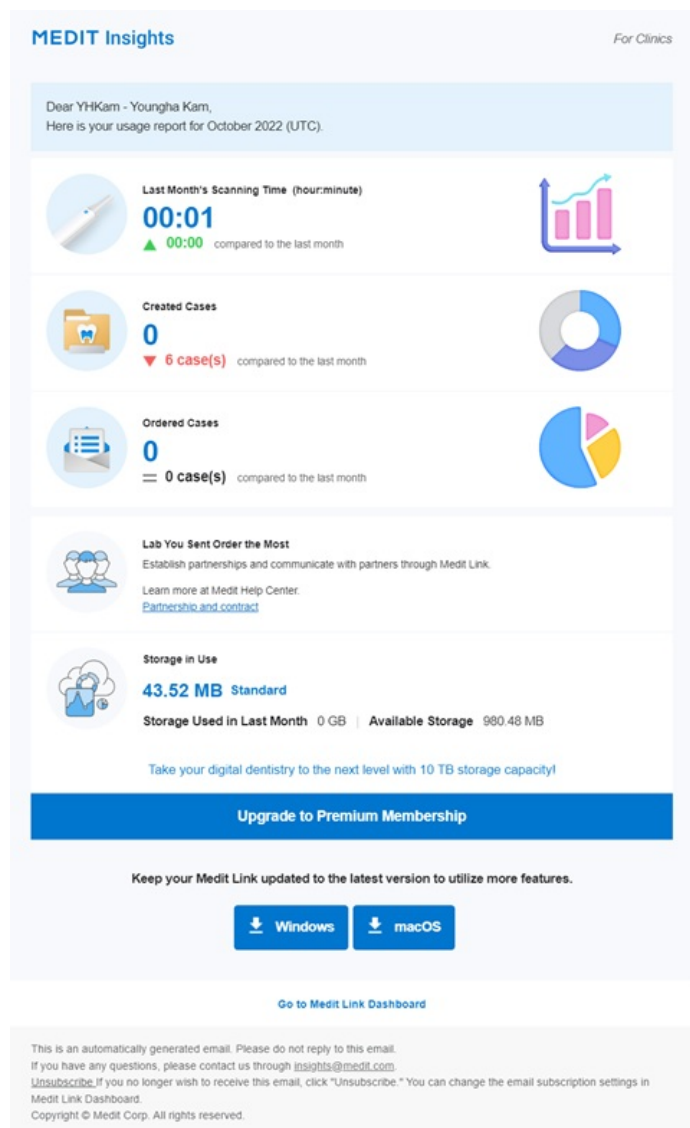


Banner	Medit proporciona consejos útiles e información aquí. * Si no desea ver el banner, desmarque la casilla de verificación Acuerdo de marketing y promoción en Mi información > Mi cuenta.
Información estadística	Se muestra la información de las estadísticas, como el tiempo de escaneo, los casos creados, el laboratorio más solicitado, etc.
Descargar Medit Link	El botón proporciona el enlace de descarga de Medit Link.
Dashboard	Toda la información estadística se basa en la información de su Dashboard. Puede ver más detalles en la Dashboard.

Cancelar suscripción a Medit Insights

Desactive la opción "Suscribirse a Medit Insights" en la Dashboard o haga clic en "Cancelar suscripción" en el correo electrónico recibido.

Case Box/Work Box


La Case Box (Clinic) o Work Box (Lab) muestra todos los casos que el usuario ha creado en la aplicación Medit Link. Puede ver los archivos a través de un navegador web sin necesidad de instalar un programa aparte.

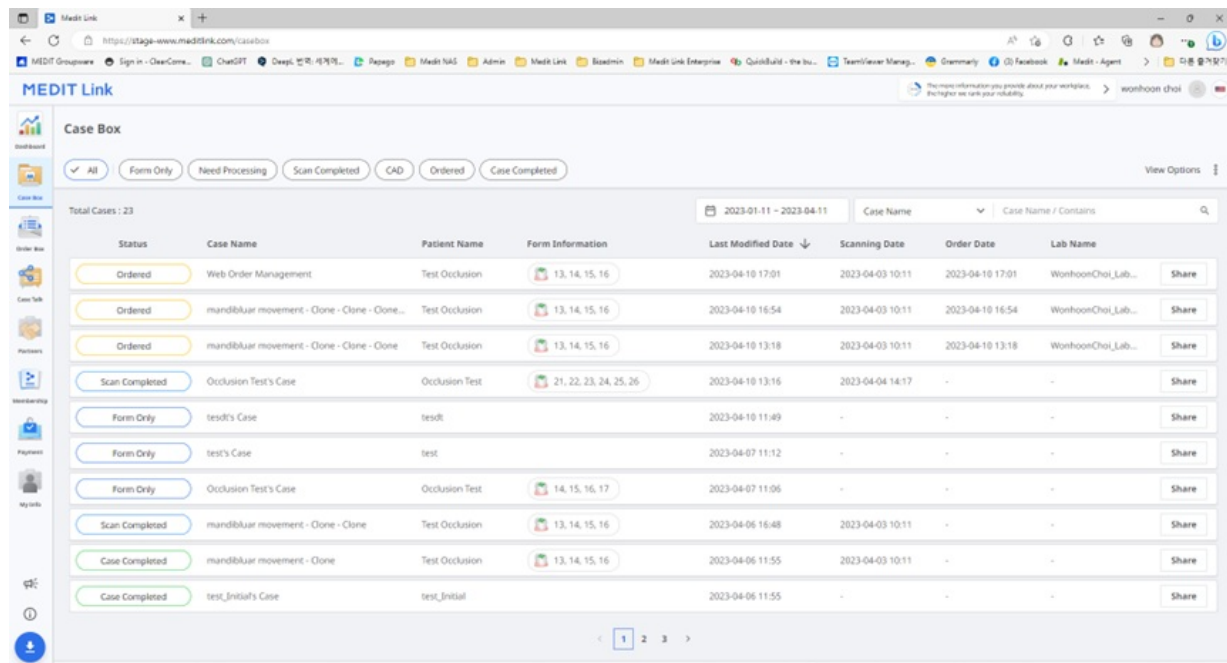

Filtrado de casos

Filtrar por estado

Puede filtrar los casos en función de su estado.

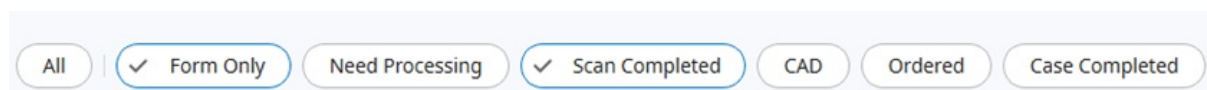

- El usuario puede hacer clic en el estado que desea ver. El navegador sólo mostrará los casos con el estado elegido.
- El usuario puede seleccionar varios estados a la vez.

El siguiente tipo de estado se proporciona en función del tipo de cuenta:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Lab)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Filtrar por duración

Puede filtrar y mostrar los casos que se modificaron por última vez dentro del periodo establecido.

1. Haga clic en el filtro de duración.



2. Seleccione el rango.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Todo: Mostrar todos los casos.
- Rango Personalizado: Especifique las fechas de inicio y fin para mostrar los casos modificados dentro de ese periodo.
- Hoy: Muestra los casos modificados hoy por última vez.
- Ayer: Muestra los casos modificados por última vez con la fecha de ayer.
- Últimos 7 días: Muestra casos modificados por última vez en los últimos 7 días, excluyendo hoy.
- Últimos 30 días: Muestra casos modificados por última vez en los últimos 30 días, excluyendo hoy.
- Últimos 90 días: Muestra casos modificados por última vez en los últimos 90 días, excluyendo hoy.
- Este mes: Muestra los casos de este mes.
- Mes anterior: Muestra los casos del mes anterior.

La lista de casos se actualizará en tiempo real con los casos creados o modificados por última vez dentro de la duración seleccionada.

Filtrar por búsqueda

Puede aprovechar las funciones de búsqueda para buscar la información necesaria de forma fácil y rápida.


Case Name

Case Name / Contains

Opciones de búsqueda basadas en la cuenta de la clinic/lab:

Case Box (Clinic)	Nombre del caso, Nombre del paciente, ID del paciente, Nombre del laboratorio
Work Box (Lab)	Nombre del caso, Nombre del paciente, Nombre de la clínica, ID del pedido

Detalles del caso

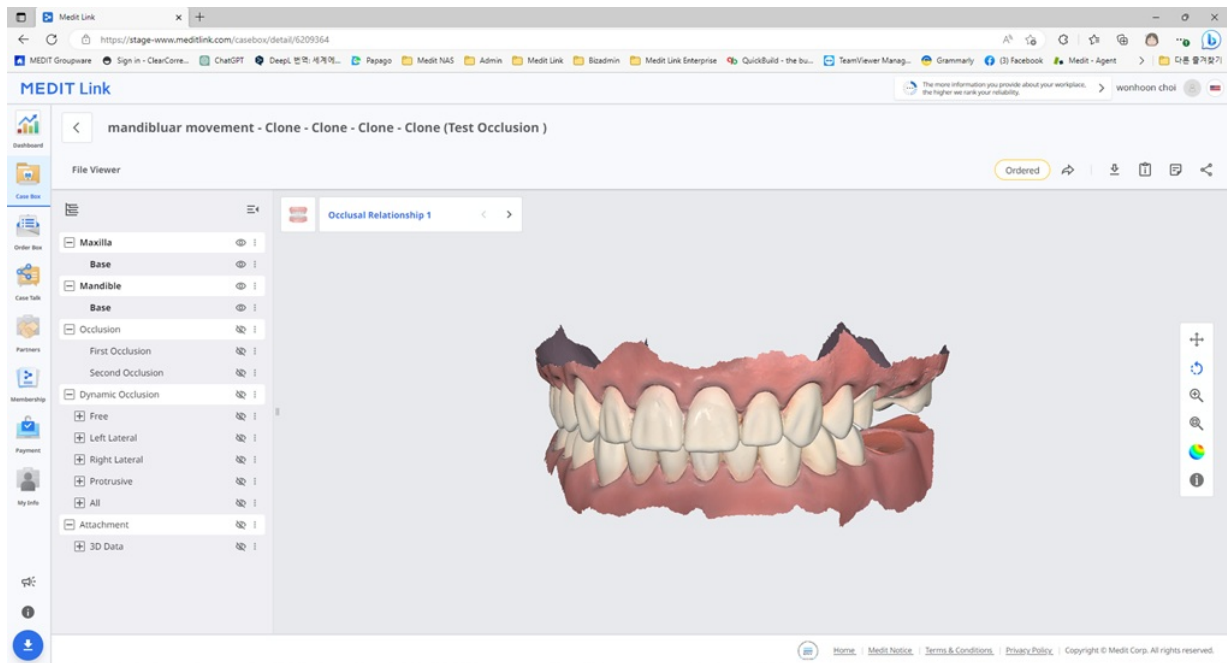

Las siguientes herramientas de gestión de casos se proporcionan en Case Box/Work Box.

	Estado del caso	Muestra el estado del caso.
	Ir al detalle	Proporcionar un acceso directo al mismo caso en otra box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Descargar	Descarga los archivos del caso en el PC local.
	Información del caso	Revise los detalles del caso y guárdelos como PDF o imprímalos.
	Nota & Etiquetas	Añada una nota o etiquetas al registrar o pedir un caso. Utilícelos para comunicar a sus socios cualquier información adicional o complementaria sobre el caso.
	Compartir	Crea un enlace para compartir. Los usuarios con el enlace compartido pueden acceder a los datos 3D en un navegador como Chrome, Firefox o Safari sin instalar programas adicionales. Puede compartir el enlace libremente con cualquiera o sólo con personas concretas. Se puede establecer un código PIN o una fecha de caducidad del enlace para proteger la información privada.

Order Box/In Box

La Case Box (Clinic) o Work Box (Lab) muestra casos pedidos en la aplicación de Medit Link.

Detalles del pedido

1	Muestra el nombre del caso y del paciente.
2	Proporciona funciones para la gestión de pedidos (aceptar/cancelar; entregar/recibir).
3	Muestra las pestañas disponibles: Orden, Visor de archivos
4	Muestra funciones para la gestión de casos y archivos: estado del caso, accesos directos para información detallada, información del caso, nota & etiquetas, etc.
5	Muestra la información detallada del pedido, incluyendo el número de pedido, nombre del paciente, nombre del socio, fecha de escaneo, fecha de pedido, fecha de entrega y nota & etiquetas.
6	Muestra la información del producto pedido y el estado de la entrega.


Pestañas en Order Box/In Box

Pedido	Visor de archivos
Compruebe la información detallada del pedido, como el ID de pedido, el nombre del paciente, el nombre de la cuenta, la fecha de escaneo, la fecha de pedido, la fecha de entrega, las notas y las etiquetas.	Visualice los archivos generados por las operaciones de escaneo/CAD. El visor de archivos muestra y gestiona los modelos 3D y las imágenes 2D adquiridos o adjuntos.

Case Talk

Los casos creados en Medit Link pueden compartirse con las personas que especifique, con cualquiera que tenga el enlace compartido o con los miembros registrados de Medit Link.

El usuario puede ver una lista de todos los casos compartidos a través de "Case Talk" en Medit Link App y Medit Link Web.

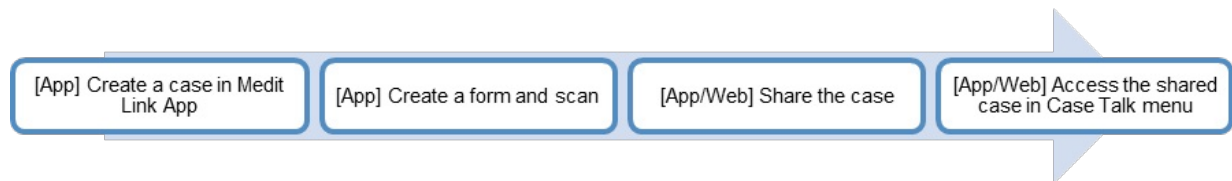


Los casos compartidos pueden verse a través de un navegador web sin necesidad de instalar un programa aparte, lo que permite una fácil comunicación sobre los datos 3D en varios dispositivos.


Creando un Case Talk

Puede crear un enlace compartido a un caso creado en Case Box/Work Box.

1. Busque un caso que quiera compartir y haga clic en el botón "Compartir" de la derecha.

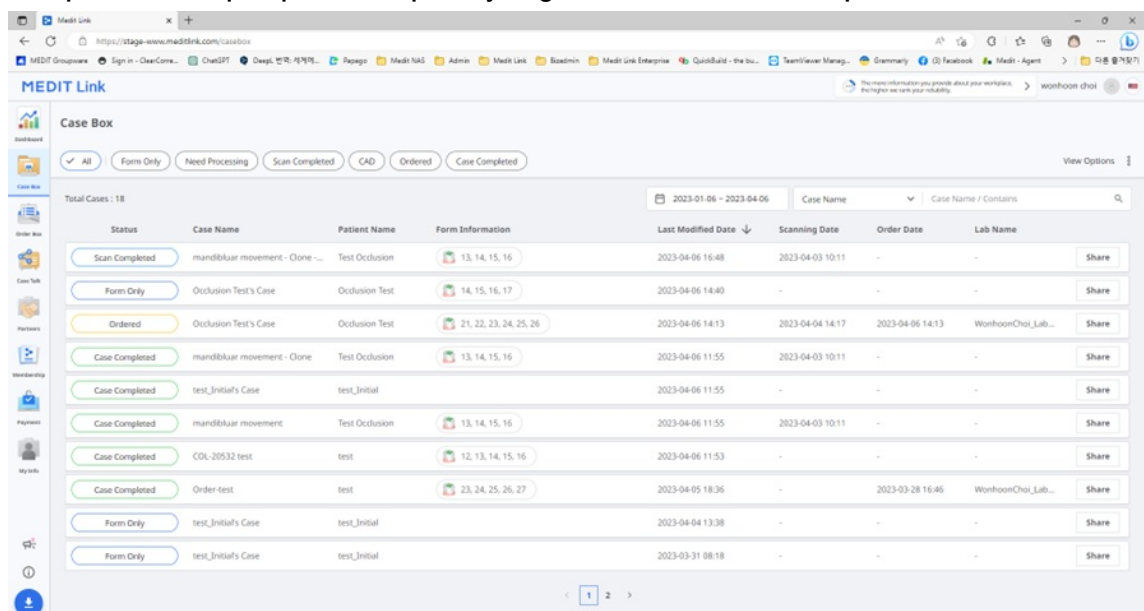

2. Seleccione los archivos que desea compartir.

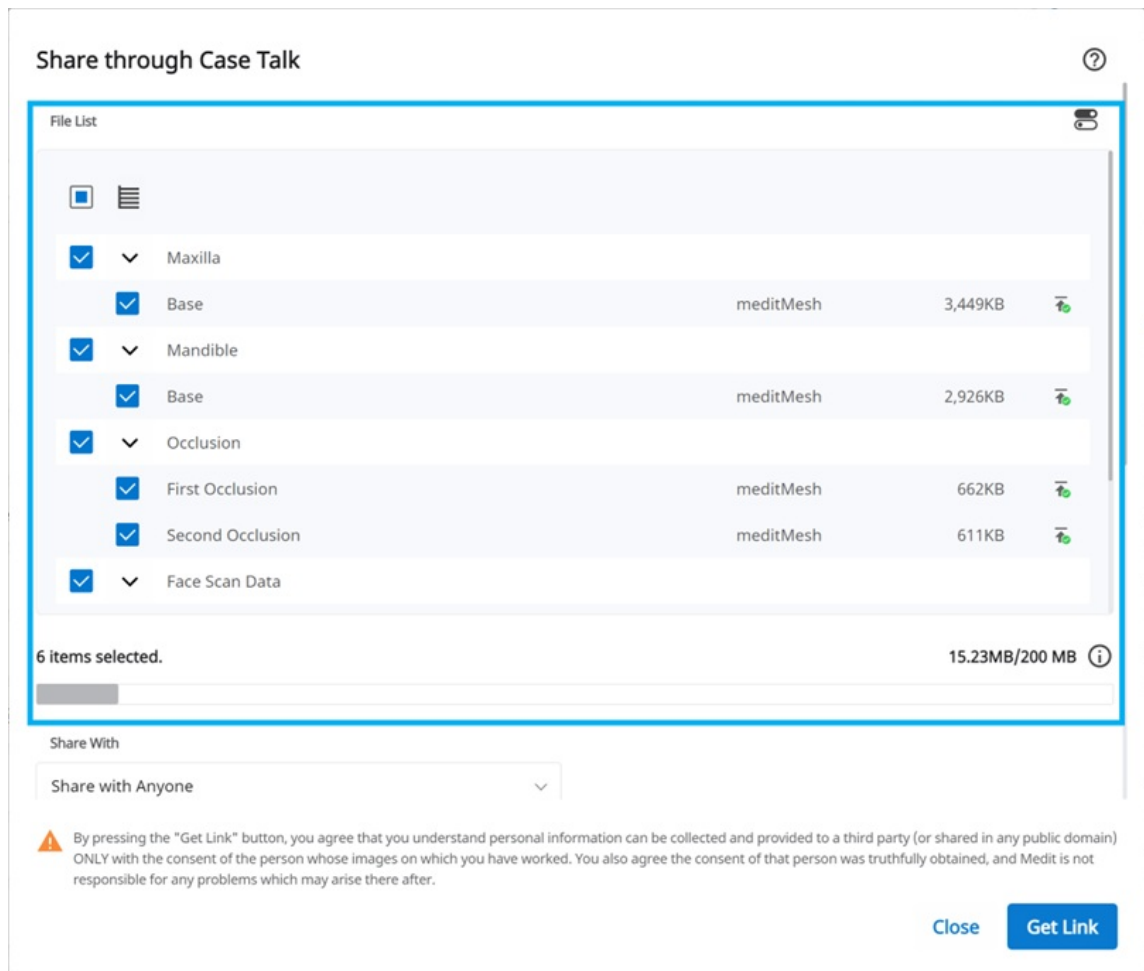

3. Establezca el tipo de permiso de uso compartido y las opciones de uso compartido.
4. Haga clic en "Obtener enlace" para crear un enlace compartido.

Establecer el tipo de permiso y las opciones de uso compartido

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

Compartir con	- Compartir con cualquiera Crea un enlace compartido. Puede compartir los archivos con cualquiera. - Compartir con personas concretas Crea y envía un enlace compartido a personas concretas.
Compartir vía	Si selecciona "Compartir con personas concretas", podrá compartir el enlace con personas concretas de varias formas. - Dirección de correo electrónico - SMS - Socios
Fecha de caducidad	Establezca la fecha de caducidad del enlace. Cuando el enlace caduque, las personas con las que lo haya compartido dejarán de tener acceso a los archivos. Puede ampliar el periodo de caducidad hasta 90 días a partir de hoy.
Código PIN	Establezca un código de acceso de 6 dígitos para garantizar la seguridad de los datos.
Compartir el nombre del paciente	Si marca esta opción, todas las personas con el enlace verán el nombre del paciente.
Conceder permiso de descarga	Si marca esta opción, todos los usuarios con el enlace podrán descargar los archivos.

Permitir comentarios	• Si marca esta opción, podrá comunicarse a través del enlace compartido. • Si desmarca la opción, el destinatario sólo podrá ver sus comentarios pero no podrá añadir los suyos.
Comentario	Puede dejar un mensaje en la sección de comentarios.

Detalles del Case Talk

Puede ver los archivos en el caso compartido. Las siguientes funciones están disponibles en la página de detalles de Case Talk.

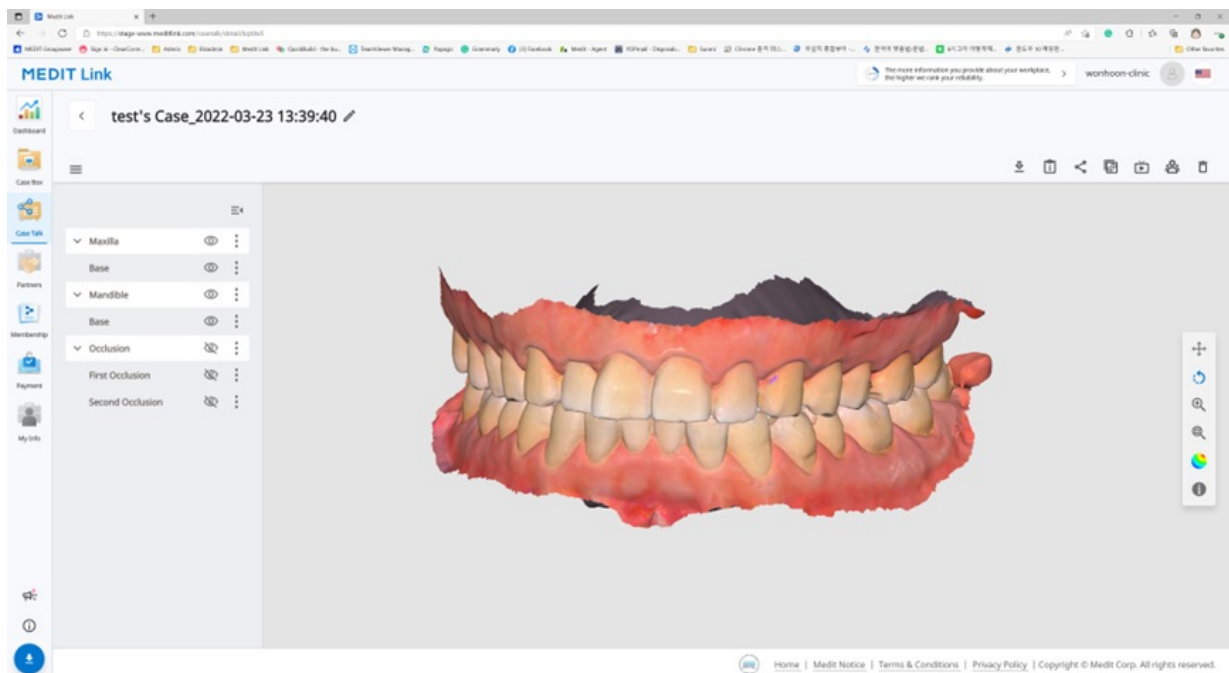

	Descargar	Descarga todos los archivos en este caso en el PC local.
	Información del caso	Muestra información detallada sobre el caso.
	Compartir	Modifique la configuración de compartir.
	Copiar enlace	Copia el enlace compartido en el portapapeles. El enlace copiado muestra los archivos compartidos en su navegador web.
	Live	Comparta su pantalla con los usuarios conectados. La pantalla compartida se sincroniza con los usuarios conectados.
	Asistentes	Muestra todos los usuarios que están accediendo al enlace compartido.
	Eliminar	Borrar el enlace compartido. El enlace compartido eliminado ya no es accesible.

¡Nota


Los siguientes servicios no están disponibles en Medit Link China.

- Live
- Asistentes

Visualizador web

Puede ver los datos compartidos a través de Case Talk en un navegador web.

Es posible comunicarse con las personas que tienen acceso al enlace mediante anotaciones y comentarios.

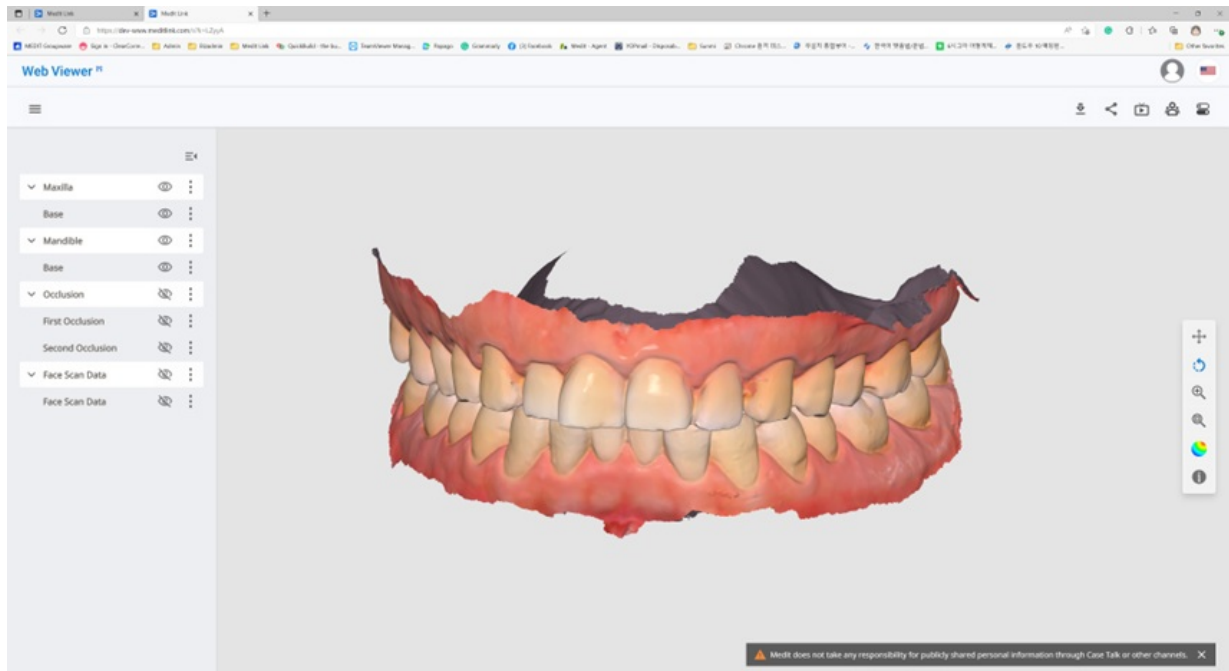

	Descargar	Descargue todos los archivos de este caso en el PC.
	Información del caso	Muestra información detallada sobre el caso.
	Compartir	Modifique la configuración de compartir.
	Live	Comparta su pantalla con los usuarios conectados. La pantalla compartida se sincroniza con los usuarios conectados.
	Asistentes	Muestra todos los usuarios que están conectados al enlace compartido.
	Etiquetado de los dientes	Cambie el sistema de etiquetado de los dientes.


¡Nota

Los siguientes servicios no están disponibles en Medit Link China.

- Live
- Asistentes

Anotación

Puede añadir anotaciones en un lugar determinado del modelo 3D. Cualquiera que tenga el enlace puede ver las anotaciones que añada.

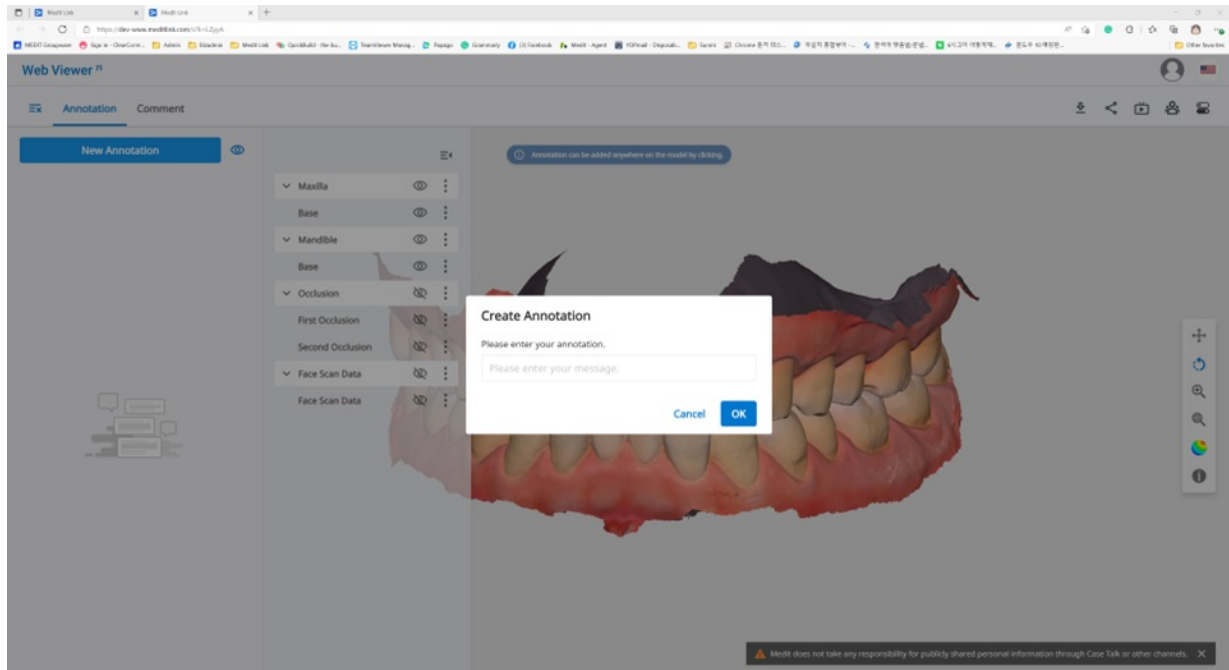

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Anotación

1. Busque el icono del menú en la esquina superior izquierda y seleccione la pestaña "Anotación". Utilice el botón "Nueva anotación" para añadir una anotación en cualquier parte de los datos con un clic.
2. Escriba el mensaje y haga clic en "Aceptar" para guardarlo.

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and two input fields: 'Please enter your annotation.' and 'Please enter your message'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

3. Puede utilizar las anotaciones como un simple canal de comunicación. Haga clic en la anotación creada para introducir una respuesta y pulse "Enviar"

This image shows a specific annotation in the interface. It displays the user 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi', the title 'Annotation 1', and a timestamp '09-09 20:31'. Below this, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Comentarios

Puede comunicarse con los usuarios que tengan acceso al enlace a través de la pestaña "Comentarios" del menú del Visor web.

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

Comentario

Compartir la pantalla en tiempo real


Puede compartir su pantalla en tiempo real.

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

Live

1. Haga clic en "Live" para compartir la pantalla del visor web con los usuarios conectados.

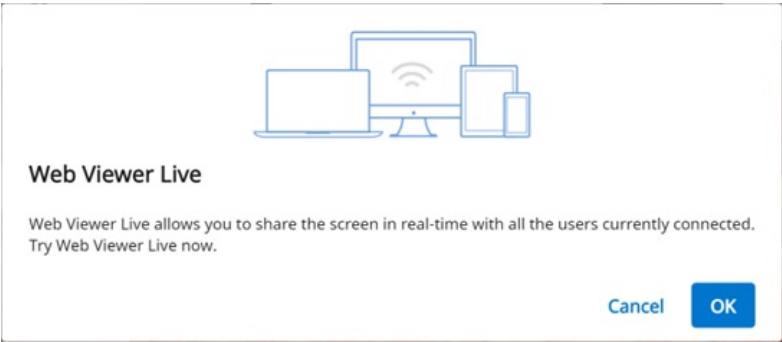


2. Haga clic en "Aceptar" para empezar a compartir su pantalla.
3. Otras personas que hayan accedido al enlace deben aceptar la pantalla compartida.
4. La pantalla del usuario que ha iniciado la el proceso de compartir la pantalla se muestra sincronizada con la pantalla de la persona que ha recibido la solicitud.

Árbol de datos

Todos los datos se agrupan y visualizan según los atributos del árbol de datos. Puede mostrar u ocultar datos, ajustar la opacidad, etc.

Controles del árbol de datos

Mostrar/Ocultar	Haga clic en el icono del "ojo" para mostrar u ocultar datos de la vista. Controle la visibilidad de los datos como un grupo o un archivo individual.
Opacidad	Pase el ratón por encima de un elemento visible para ver la barra deslizante de opacidad. Ajuste la barra deslizante para cambiar la transparencia de sus datos. preoperationmaxillary.meditMe

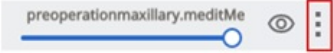Menú ampliado	El menú ampliado aparece a la derecha de cada elemento del Árbol de datos. Incluye las siguientes opciones:  • Mostrar sólo esto: Oculta todos los demás datos excepto el actual. • Ocultar: Oculta los datos actuales. • Duplicar: Clonar datos dentro del caso actual. • Exportar: Guarda los datos en un PC local. • Borrar: Borra los datos actuales o el grupo de datos.
---------------	---

Control de modelos 3D

	Panorámica	Mueve el modelo.
	Rotar	Gira el modelo.
	Acercar/Alejar	Acerca y aleja el modelo.
	Ajustar zoom	Coloca el modelo en el centro de la pantalla.
	Modo de visualización del modelo	Encender textura
		Apagar textura
	Configuración de la cuadrícula (mm)	Cuadrícula encendida
		Superposición encendida

		Cuadrícula apagada	Ocultar la cuadrícula.
---	--	-------------------------------	------------------------

Socios

Puede buscar socios potenciales para solicitar una asociación y ver la lista de socios actuales y socios con contrato.


iNota

Los servicios que utilizan Google Maps no están disponibles en Medit Link China.

Buscar socios

Puede buscar a los usuarios de Medit Link en función de su nombre y/o dirección comercial.

En los resultados de la búsqueda, puede enviar una solicitud de asociación a una organización con la que le gustaría trabajar.

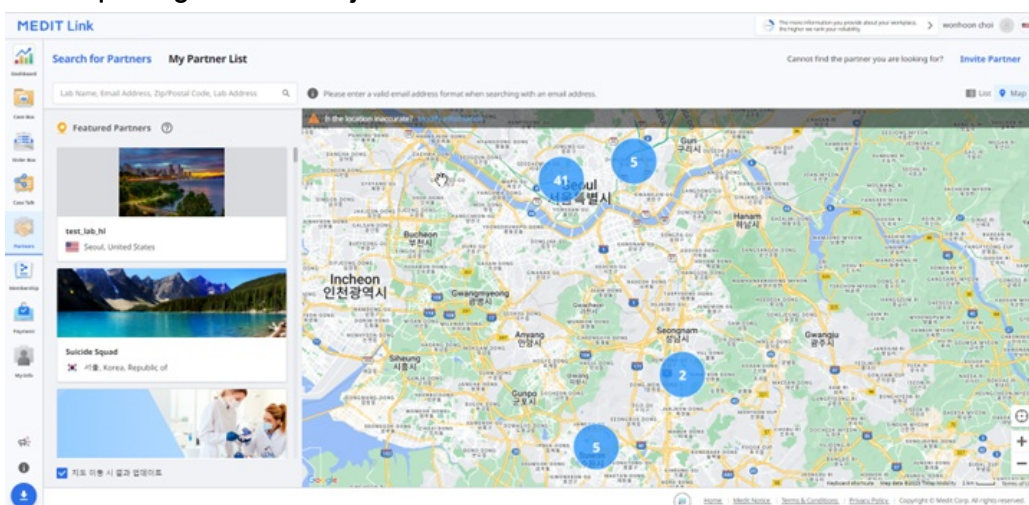


Mi lista de socios

Puede revisar sus asociaciones y contratos actuales con todas sus empresas asociadas existentes en Mi lista de socios.

¿En qué se diferencia un contrato de una asociación?

Una vez que se asocie con una empresa, puede solicitar hacer un contrato con la organización.

- Si su socio acepta su solicitud de contrato, puede proceder al pago de los pedidos realizados.

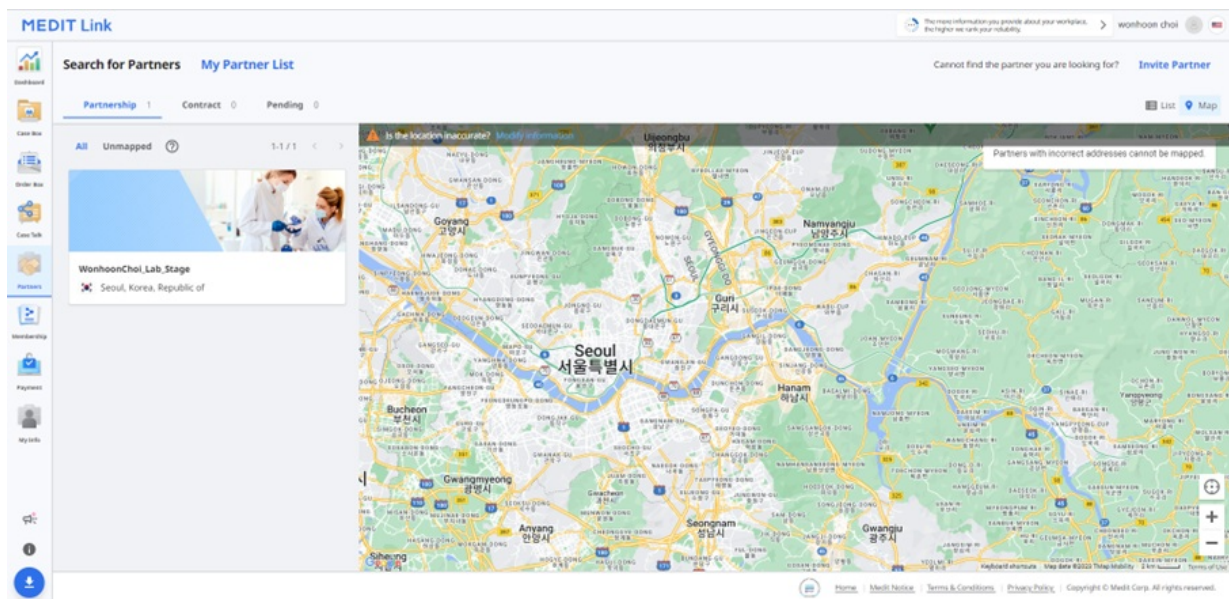

iNota

El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Contrato

Invitación a los socios

Si tiene una organización con la que quiere trabajar, puede invitarla a unirse a Medit Link. La asociación se formará automáticamente una vez que acepten la invitación.

1. Haga clic en "Invitar a un socio" en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del proveedor con el que desea trabajar y envíe una invitación con una solicitud de asociación.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. Una vez que la organización invitada acepte la invitación y se inscriba en Medit Link, la asociación se establecerá automáticamente.

Membresía

La política de afiliación de Medit Link pretende establecer un entorno digital más amplio, ampliando gradualmente la prestación de diversos servicios basados en la plataforma en la nube.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una experiencia más coherente y personalizada con nuestra nueva política de afiliación.

Hay dos planes de afiliación disponibles:

Estándar

- Plan estándar gratuito para todos los usuarios registrados
- 1 GB de almacenamiento en la nube
- Para nuevos usuarios

Premium

- Plan de pago
- 10 TB de almacenamiento en la nube
- Para usuarios con muchos casos y varios datos
- Un mes de prueba gratuita

	Estándar	Premium
Almacenamiento en la nube	1 GB	10 TB
Cuota mensual	Gratuito	\$0,99/mes
* El almacenamiento en nube no calcula el espacio que ocupan los datos sin procesar.		

¡Nota

Los planes de afiliación estarán disponibles en Medit Link China. Puede obtener el plan Premium de forma gratuita hasta el lanzamiento oficial de la función.

Membership

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

My Plan

Standard
Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Subscribe](#)

Cloud Storage

Set Period: 2018-01-01 ~ 2023-04-06

353.21 MB / 1 GB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ **Raw Data** 11.97 GB
Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 353.21 MB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

[Home](#) [Medit Notice](#) [Terms & Conditions](#) [Privacy Policy](#) Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Mi plan

En la sección de la izquierda, puede ver qué plan de afiliación tiene actualmente. Aquí también puede cambiar el estado de su suscripción en cualquier momento.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Almacenamiento en la nube

En la sección de la derecha, puede gestionar su almacenamiento en la nube.

Cloud Storage

Set Period

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ ● Raw Data	147.52 GB
Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	
☐ ● Result Files & Attachments	13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	


Escoger periodo	Establezca el período específico para eliminar los datos creados dentro de ese plazo. • Todos: Ver todos los archivos. • Hace 1 semana: Ver los archivos que han pasado una semana después de la creación. • Hace 1 mes: Ver los archivos que han pasado un mes desde su creación. • Hace 6 meses: Ver los archivos que han pasado seis meses desde su creación. • Hace 1 año: Ver los archivos que han pasado un año desde su creación.
Datos sin procesar	Los datos sin procesar no ocupan espacio en el almacenamiento en la nube, por lo que no aparecerán en el gráfico pi. Pero puede gestionar los datos sin procesar desde aquí si es necesario, por ejemplo, borrarlos para proteger la información privada del paciente, etc.
Resultado & adjuntos	El resultado y los archivos adjuntos ocupan espacio en la nube. Si la nube está llena, puede conseguir más espacio de almacenamiento eliminando los archivos innecesarios.
Eliminar	Elimina los archivos seleccionados del almacenamiento en la nube para liberar espacio.

Suscribirse

Si actualmente estás en el plan Estándar o en el plan Premium con un código de canje, puedes suscribirte a la membresía Premium.

El pago se realiza a través del servicio Stripe (www.stripe.com).

1. Haga clic en el botón "Suscripción".

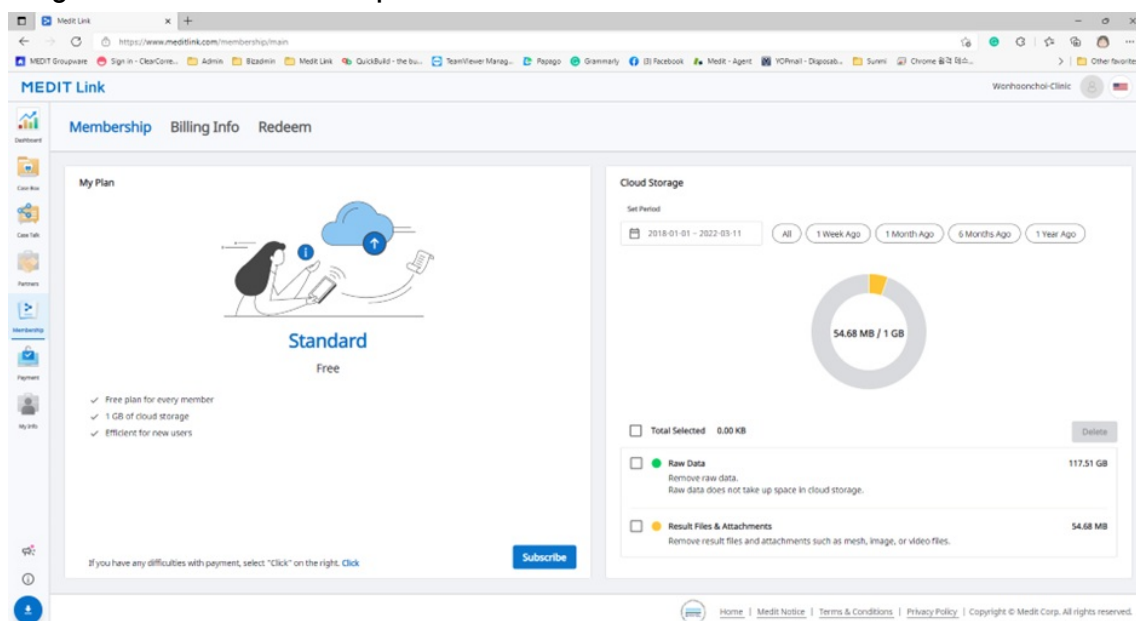

2. Compruebe la descripción del plan Premium y vuelva a hacer clic en "Suscribirse".

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Compruebe el precio y las condiciones e introduzca la información necesaria para el pago. A continuación, haga clic en "Suscribirse".

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by [stripe](#) | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time 

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. El pago puede tardar varios segundos. Cuando haya terminado, verá el mensaje de confirmación.

Subscribe Membership



Payment Successful.

[Invoice](#)

[Close](#)

Anular suscripción

Puede darse de baja en cualquier momento. Tras darse de baja, podrá seguir utilizando la suscripción Premium durante los días restantes de ese mes de pago. Su plan cambiará a Estándar a partir del siguiente día de pago, y el almacenamiento en la nube se limitará a 1 GB. Si se supera la capacidad de almacenamiento en la nube, no se realizará una copia de seguridad de los archivos, y las funciones de pedir y compartir no estarán disponibles.


1. Haga clic en "Anular suscripción".

The screenshot shows the MEDIT Link web application. The 'Membership' tab is active, displaying the 'My Plan' section with the 'Premium' plan at 0.99\$ USD / Monthly. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The 'Cloud Storage' section shows a progress ring at 0.00 KB / 10 TB and a list of files to be deleted.

File Type	Size
Total Selected	0.00 KB
Raw Scan Files	0.00 KB
Result & Attachment	0.00 KB

2. Haga clic en "Cancelar suscripción".

Cancel Subscription

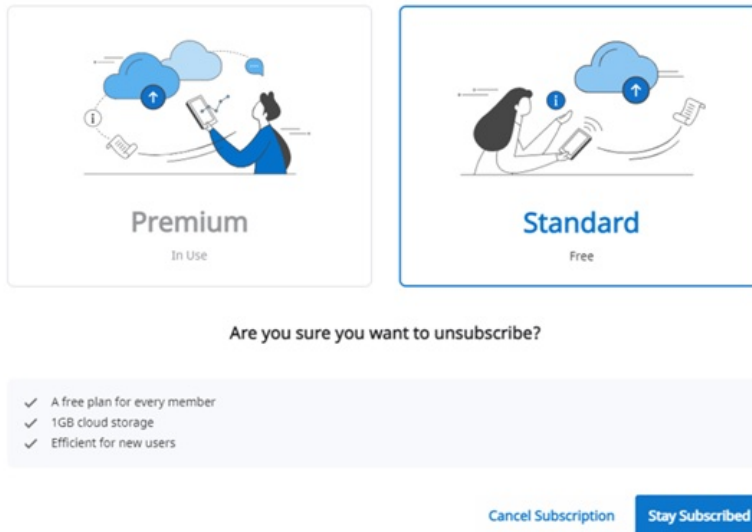


3. Para confirmar que desea cancelar la suscripción, vuelva a hacer clic en "Cancelar suscripción" en la nueva ventana emergente.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. Su suscripción ha sido cancelada.
5. Su plan cambiará a Estándar a partir del siguiente día de pago, y el almacenamiento en la nube se limitará a 1 GB. Si se supera la capacidad de almacenamiento en la nube, no se realizará una copia de seguridad de los archivos, y las funciones de pedir y compartir no estarán disponibles.

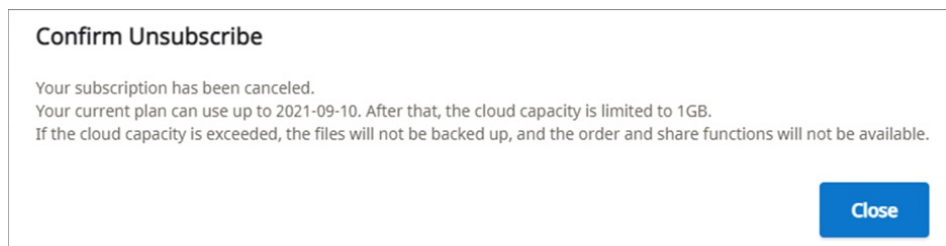

Información de facturación

Puede comprobar el historial de pagos de las suscripciones de los miembros, incluyendo una factura para cada pago. También puede añadir o cambiar el método de pago, que se aplicará a partir del siguiente pago programado.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe

Below this, there is a button labeled 'Edit Payment Method'. A message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Cómo añadir un método de pago

1. Haga clic en "Editar método de pago".

This screenshot is identical to the previous one, but with a red rectangular box highlighting the 'Edit Payment Method' button in the 'My Plan and Billing Information' section.

2. Haga clic en "Añadir método de pago".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

- Introduzca la información necesaria y haga clic en "Añadir".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

- El nuevo método de pago añadido se establecerá como predeterminado y se utilizará para el siguiente pago.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Cómo cambiar un método de pago

1. Haga clic en el icono de menú ampliado situado junto a la forma de pago que desea modificar en la ventana de diálogo de facturación.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Haga clic en "Establecer por defecto" para establecer la tarjeta seleccionada como método de pago por defecto.

The screenshot shows a 'Billing' page with two main sections: 'CURRENT PLANS' and 'PAYMENT METHODS'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. Below the cards is a '+ Add payment method' link. A red box highlights a menu with 'Make default' and 'Delete' options. At the bottom, there is a 'BILLING INFORMATION' section.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021

VISA **** 4242 Expires 11/2021

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Canjear

Registre el código de canje proporcionado como parte de la promoción. Puede utilizar la suscripción Premium junto con el código de canje.

Registrar código de canje

1. Introduzca el código de canje y haga clic en "Registrar".

2. Lea el aviso y elija "Registrar" o "Aplicar" en el cuadro de diálogo emergente.
 - **Registrar:** Registra el código de canje. Puede activar y utilizar el código de canje más tarde, después de registrarse.
 - **Aplicar:** Registra y activa el código de canje. El descuento de la promoción se aplica inmediatamente.

Activar el código de canje

Puede registrar varios códigos de canje, pero deberá activar el que desee utilizar.

1. Haga clic en el botón "Activar" situado junto al código que desea utilizar.
Si no hay ningún código con el estado "Activo", el que elija se aplicará inmediatamente. Si algún código ya está activado, su estado cambiará a "En espera" y se utilizará el que usted eligió en su lugar. Cuando caduque el código de canje actual, se reactivará automáticamente el que esté en espera.
2. **iNota**
Sólo puede haber un código en estado "En espera".

Medit Link

[Sign in - ClearCorre...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome 음악 디스...](#)
[루실지 통합뷰어 ...](#)

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

wonhoonchol_Clinic_Dev_3

MEDIT Link

[Membership](#)
[Billing Info](#)
[Redeem](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Pago

¡Nota


El siguiente servicio no está disponible en Medit Link China.

- Pago

Datos de pago (cuentas Clinic & Lab)

Puede consultar el historial de pagos y transacciones entre usted y sus socios a través de la página Detalle pagos.

Información de la cuenta de pago (sólo cuenta Lab)

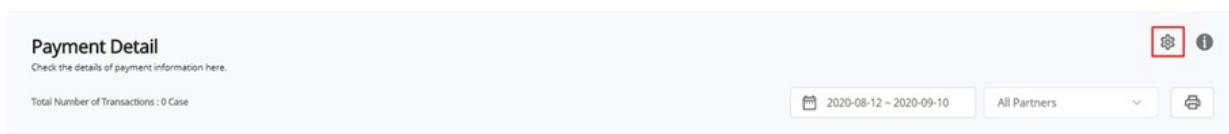

Esta función sólo está disponible para la cuenta del administrador del laboratorio para permitirle introducir información para que sus socios le paguen.

- Debe introducir los datos de su cuenta de pago para que sus socios puedan realizar pedidos a través del sistema de pago en línea.

¡Nota

Si selecciona un país donde se admite Stripe, se le dirigirá a Stripe haciendo clic en un botón para registrarse en Stripe.

Puede seleccionar Corea del Sur, a continuación, puede introducir un número de cuenta bancaria local para recibir el pago, y KCP procesará su pago.

Mi información

Mi cuenta

Aquí puede revisar y modificar la información que proporcionó durante el registro y comprobar el estado de su asociación.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) ▾

Country
Korea, Republic of ▾

1. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Mi organización (sólo cuenta de administrador)

Aquí puede revisar y editar la información sobre su organización. Esta sección sólo está disponible para las cuentas de tipo administrador.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[Address Information](#) [Organization Information](#) [Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of ▾

State/Province *
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Mi escáner

Puede comprobar la información del dispositivo conectado para la cuenta.

My Account My Organization My Scanner My Price List								
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days

Mi lista de precios (solo cuenta de administrador Lab)

Puede introducir los productos que ofrece su laboratorio y la información sobre el precio de cada producto.

My AccountMy OrganizationMy ScannerMy Price List ⓘ

TeethArchAED (₪)A

✓ All (99/557)Inlay (8/12)Onlay (8/12)Coping (10/17)Denture Coping (5/5)Crown (15/26)Pontic (23/36)Post & Core (3/4)Veneer (8/11)Implant Crown (12/53)Custom Abutment (2/3)Surgical Guide (1/1)Offset Substructure (4/5)Partial Denture (0/7)Diagnostic Wax-Up (0/1)Custom Abutment + Implant Crown (0/159)Custom Abutment + Coping (0/45)Post & Core + Crown (0/100)Post & Core + Coping (0/50)

NameTypeMethodMaterialPrice

☐

인레이 지르코니아Inlay- Zirconia56.03

☐

인레이 골드Inlay- Gold1.03

☐

인레이 프레스 세라믹Inlay- Press Ceramic2.03

☐

인레이 레진Inlay- Resin3.03

☐

인레이 하이브리드 세라믹Inlay- Hybrid Ceramic4.03

☐

인레이 글라스 세라믹Inlay- Glass Ceramic1.00

☐

인레이 컴퍼지트 레진Inlay- Composite Resin1.00

☐

인레이 e.maxInlay- e.max1.00

Save

¡Nota

- Una vez que contrate con un socio, éste podrá pedir sus productos basándose en esta lista de productos y precios.
- Si sólo tiene una asociación con su socio, Medit Link no admite pedidos que requieran información sobre precios.

Otro menú

Noticias & Actualizaciones

Puede consultar los avisos importantes de Medit y las actualizaciones del programa de software Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Información Medit

Puede obtener varias informaciones sobre el uso de Medit Link. Acceda a los recursos educativos e informativos de Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube y Medit Help Center.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Descargar la App de Medit Link

Puede descargar la última versión del instalador del programa desde la web. Este menú es útil cuando se pierde el instalador suministrado en el paquete del producto, o se tiene un instalador obsoleto.

Nota

Medit Link se actualiza automáticamente cuando tiene conexión a Internet.

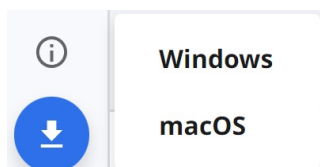

Vista general

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용안 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

1	Barra de título	Consulte Medit Link App > Barra de título para obtener información detallada.
2	Menú	Consulte Medit Link App > Menú para obtener información detallada.
3	Herramientas y funciones	Consulte Medit Link App > Visor de archivos y Medit Link App > Opciones de visualización para obtener información detallada.
4	Lista de casos	Consulte Medit Link App > Filtrado y búsqueda para obtener información detallada.

Caja de resumen

Flujo de trabajo		Cuenta Clinic	Cuenta Lab
Paso 1	Crear casos	Case Box: Cree casos y búsqelos y visualícelos fácilmente con varias opciones de filtrado y búsqueda. Con el caso creado, puede enlazar directamente con programas de escaneo y programas CAD para trabajar en ellos.	
Paso 2	Pedir/Gestionar casos	Order Box: Gestione los casos pedidos. Se proporcionan funciones para gestionar el proceso desde el pedido hasta la finalización de los casos.	In Box: Gestionar los casos de pedidos recibidos. Se proporcionan funciones para gestionar el proceso de aceptación, rechazo, envío y finalización de casos.

Paso 3	Trabajo de escaneo/CAD		Work Box: Gestione casos que han sido reenviados desde In Box o que usted ha creado. Puede enlazar directamente con programas de escaneado y programas CAD para trabajar en ellos.
Paso 4	Compartir casos	Case Talk: Comparta los casos creados con restricciones, sin restricciones, con personas específicas, o con otros miembros registrados de Medit Link.	
Paso 5	Trabajo suplementario o adicional	App Box: Utilice diversas aplicaciones que complementen su flujo de trabajo de odontología digital. Puede descargar e instalar Medit o aplicaciones de terceros.	
Paso 6	Borrar/restaurar casos	Trash Box: Ver, restaurar o eliminar permanentemente casos de la Trash Box.	

En el cuadro siguiente se resumen las Boxes disponibles en cada tipo de cuenta Clinic y Lab.

Tipo de cuenta		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Cuentas Clinic	Administrador	O	O	X	X	O	O	O
	Miembro	O	X	X	X	O	O * Sólo función de restauración	O
Cuentas Lab	Administrador	X	X	O	O	O	O	O
	Miembro	X	X	X	O	O	O * Sólo función de restauración	O

Barra de título


La barra de título proporciona acceso rápido a funciones como el estado de la red, la sincronización en la nube y las notificaciones.



Mi Información

Mis información contiene información básica del usuario, como imagen de perfil, nombre de la organización, dirección de correo electrónico y nombre de usuario.

También proporciona una opción de cierre de sesión y un acceso directo a la página Mi cuenta en Medit Link Web.

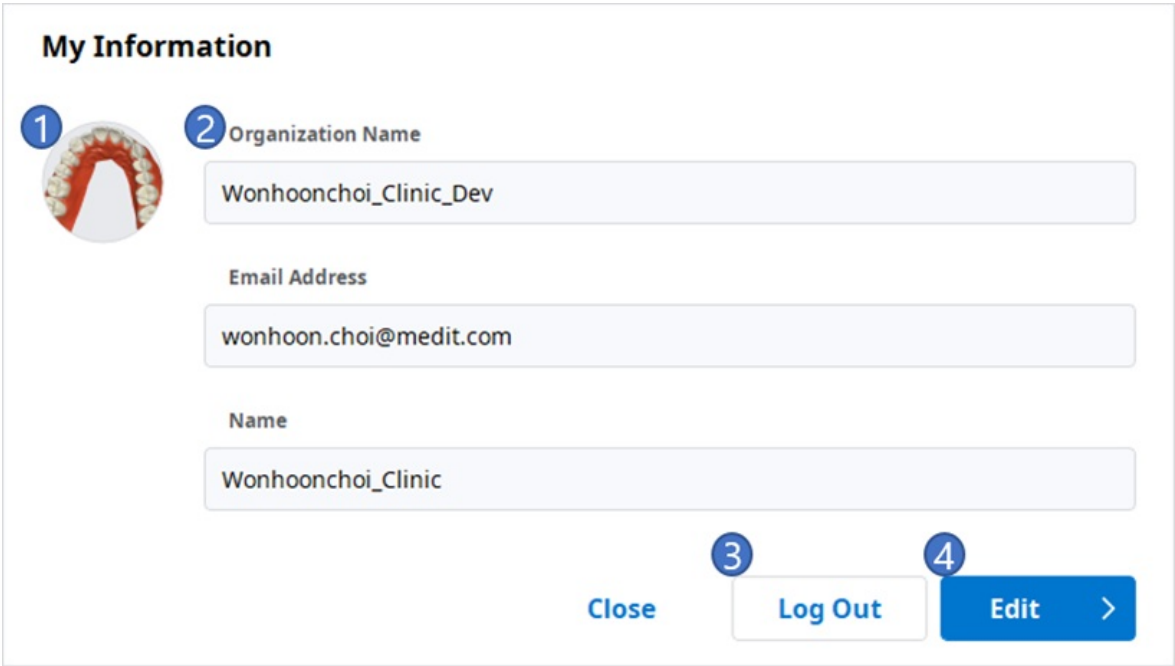

1	Muestra la imagen de perfil.
2	Muestra el nombre de la organización, la dirección de correo electrónico y el nombre de usuario.
3	Cierra la sesión de la cuenta corriente.
4	Vaya a Medit Link Web mientras está conectado con la cuenta actual. Puede ver, editar y gestionar la información de la cuenta que introdujo al registrarse.

Notificaciones

Puede ver notificaciones relacionadas con contratos, pedidos y procesos de trabajo.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

1	Marque la casilla para mostrar sólo los mensajes no leídos.
2	Haga clic en cualquier notificación para ir inmediatamente al caso o página web relacionados.

Administrador de la sincronización de casos

[illegible]

Recuento de casos / Casos seleccionados	Compruebe el número de todos/los casos seleccionados que deben cargarse.
Cargar todo	Carga todos los casos a la nube.
Cancelar todo	Cancelar todas las solicitudes de carga.
	Sube el caso a la nube.
	Cancelar la carga del caso.
	Vuelva a intentar cargar el caso.

Reuento de casos / Casos seleccionados	Compruebe el número de todos los casos seleccionados que deben descargarse.
Descargar todo	Descarga todos los casos en el PC.
Cancelar todo	Cancelar todas las solicitudes de descarga.

	Descarga los casos en el PC.
	Cancelar la descarga del caso.
	Vuelva a intentar descargar el caso.

Estado de la red

Medit Link le permite utilizar todas las funciones sin problemas cuando está conectado a una red.

Para ayudarle a comprobar el estado de su conexión de red en tiempo real, el icono de estado de la red aparece en la barra de título.

Si la conexión de red no es buena, puede experimentar las siguientes restricciones:

- Algunas funciones, como pedir un caso, crearlo, compartirlo a través de Case Talk y la sincronización en la nube, estarán restringidas.
- El rendimiento global del servicio puede verse reducido debido al impacto del entorno de la red.

En este caso, puede entrar en el modo sin conexión para realizar las tareas básicas y luego utilizar las funciones que requieren Internet una vez que esté conectado.

iNota

El símbolo de red indica la velocidad de respuesta entre la zona actual y AWS (Amazon Web Service). No significa la velocidad de su red, por lo que a veces puede mostrar el estado como pobre o malo, a pesar de que su velocidad de red es lo suficientemente rápido.


Si el otro proceso utiliza la misma red, la velocidad puede mostrarse como pobre o mala, y el rendimiento general de Medit Link podría ser malo. En este caso, por favor, no comparta la red con otros procesos.

Por ejemplo, la función "Cargar datos sin procesar" es una gran parte del proceso de red. Si el símbolo muestra un estado deficiente o malo, vaya a Configuración > Cargar datos sin procesar y desactive "Cargar automáticamente".

Menú


Dashborad

Puede ver las estadísticas de todo el trabajo realizado en Medit Link en gráficos y tablas visualizadas, tanto en la aplicación Medit Link como en la web.

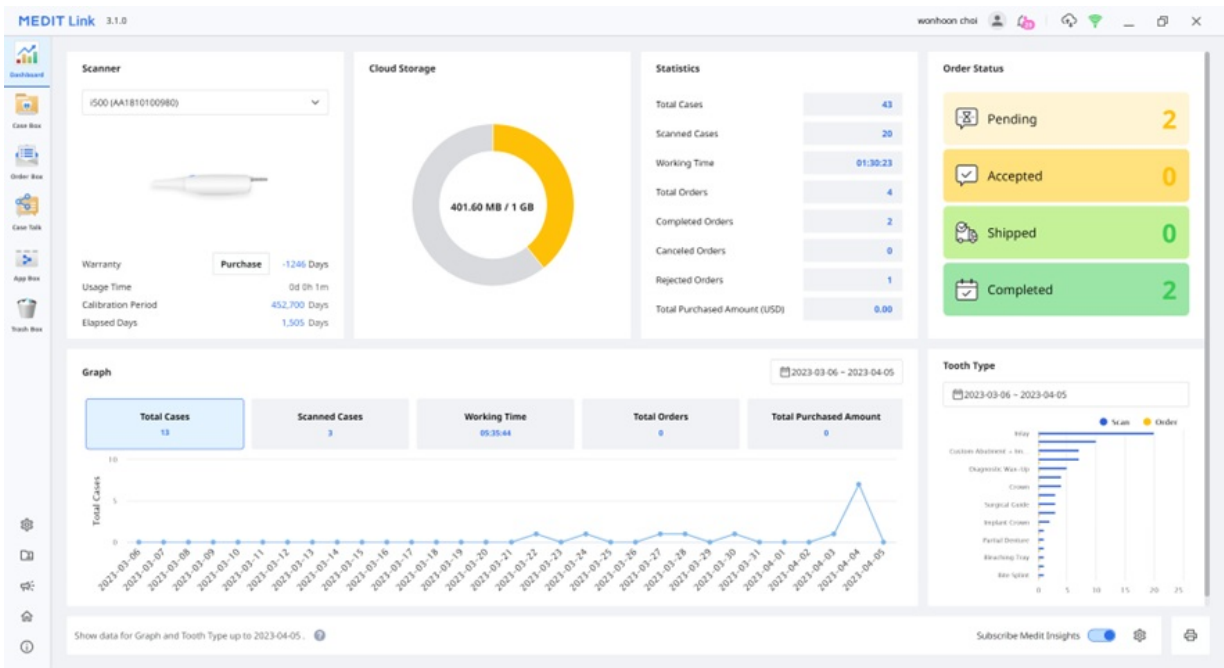

Nota
Por favor, consulte [Medit Link Web > Dashboard](#) para más información sobre la Dashboard y Medit Insights.

Case Box/Work Box

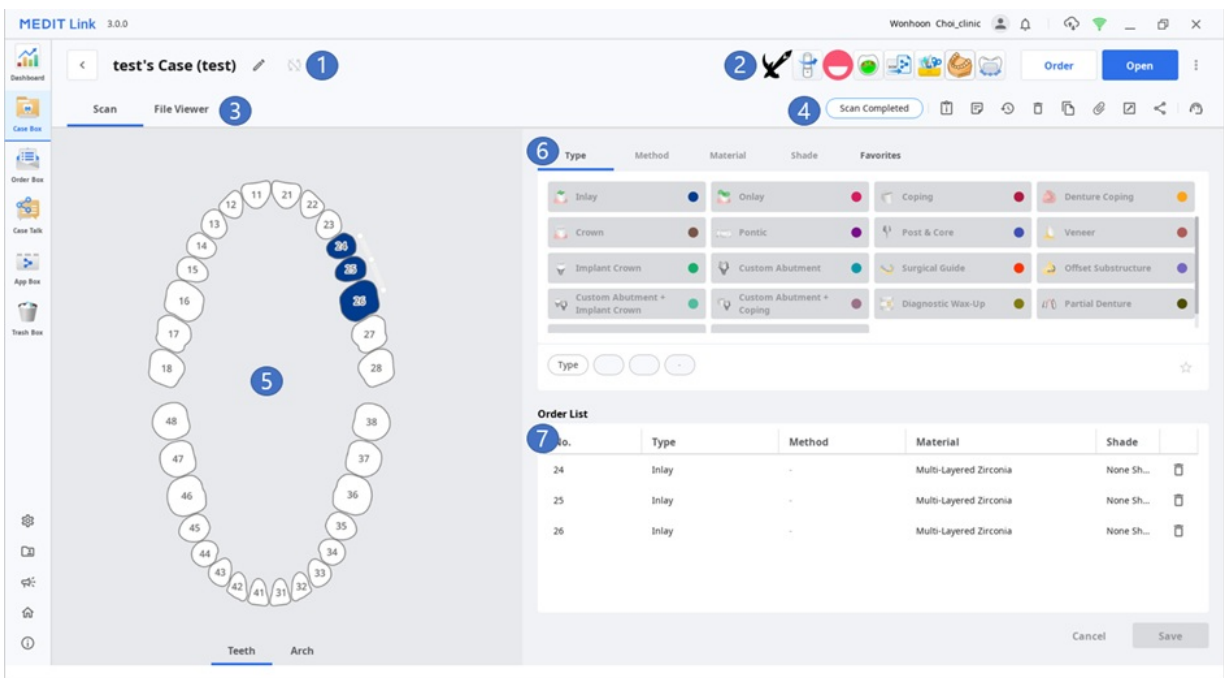

1	Muestra el nombre del caso y del paciente.
2	Proporciona funciones clave disponibles: Botones Pedir/Escanear(Abrir)/Pedir e iconos de Apps.
3	Muestra las pestañas disponibles: Formulario, CAD y Visor de archivos.
4	Muestra funciones para la gestión de casos y archivos:
5	Muestra la interfaz de usuario de registro de formularios para el programa CAD seleccionado.
6	Proporciona información sobre el tipo/método/material/sombra para que los usuarios elijan el número de diente seleccionado.
7	Muestra la información de tipo/método/material/sombra aplicada a los dientes seleccionados.

Pestañas en Case Box/Work Box

Formulario	CAD	Visor de archivos
La pestaña de formulario proporciona una interfaz de usuario para introducir información básica para el trabajo de escaneo, como el tipo, el método, el material para los números de los dientes y las opciones de escaneo. La información que introduzca se transmitirá al programa de escaneo conectado y se utilizará como información de pedido cuando realice un pedido a su socio.	La pestaña CAD proporciona una interfaz de usuario para configurar las opciones CAD. La información que se configura se pasa al programa CAD conectado.	Vea los archivos de resultados generados por los programas de escaneo y CAD. El visor de archivos muestra y gestiona los modelos 3D y las imágenes 2D adquiridos o adjuntos.


Funciones en Case Box/Work Box

Las siguientes funciones están previstas para el Case Box/Work Box.

	Estado del caso	Muestra el estado del caso.
	Ir al detalle	Proporciona un acceso directo al mismo caso en otra Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Información del caso	Revise los detalles del caso y guárdelos como PDF o imprímalos.
	Nota & Etiquetas	Añada una nota o etiquetas al registrar o pedir un caso. Utilícelos para comunicar a sus socios cualquier información adicional o complementaria sobre el caso.

	Historial de casos	Proporciona información detallada sobre el historial del caso. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Eliminar	Eliminar el caso. No puede eliminar casos pedidos o casos que fueron creados fuera de línea.								
	Clonar	Crea una réplica del caso actual en la Case Box. Todos los datos se copiarán en el caso clonado. Esta función ayuda a replicar la información del tratamiento para el mismo paciente o hacer un pedido adicional con la misma información o archivos.								
	Adjuntar	Adjunte archivos en varios formatos.								
	Exportar	Exporte archivos de resultados de escaneo o CAD al PC local. Puede elegir el formato de archivo que prefiera al exportar los archivos. Los archivos exportados pueden utilizarse para trabajos posteriores en software CAD y CAM.								
	Compartir	Cree un enlace para compartir. Los usuarios con el enlace compartido pueden acceder a los datos 3D en un navegador como Chrome, Firefox o Safari sin instalar programas adicionales. Puede compartir este enlace libremente con cualquiera o solamente con gente específica. Se puede establecer un código PIN o una fecha de caducidad del enlace para proteger la información privada.								
	Enviar solicitud de soporte	Accede a una página del Centro de ayuda de Medit para enviar una solicitud de asistencia.								

Order Box/In Box

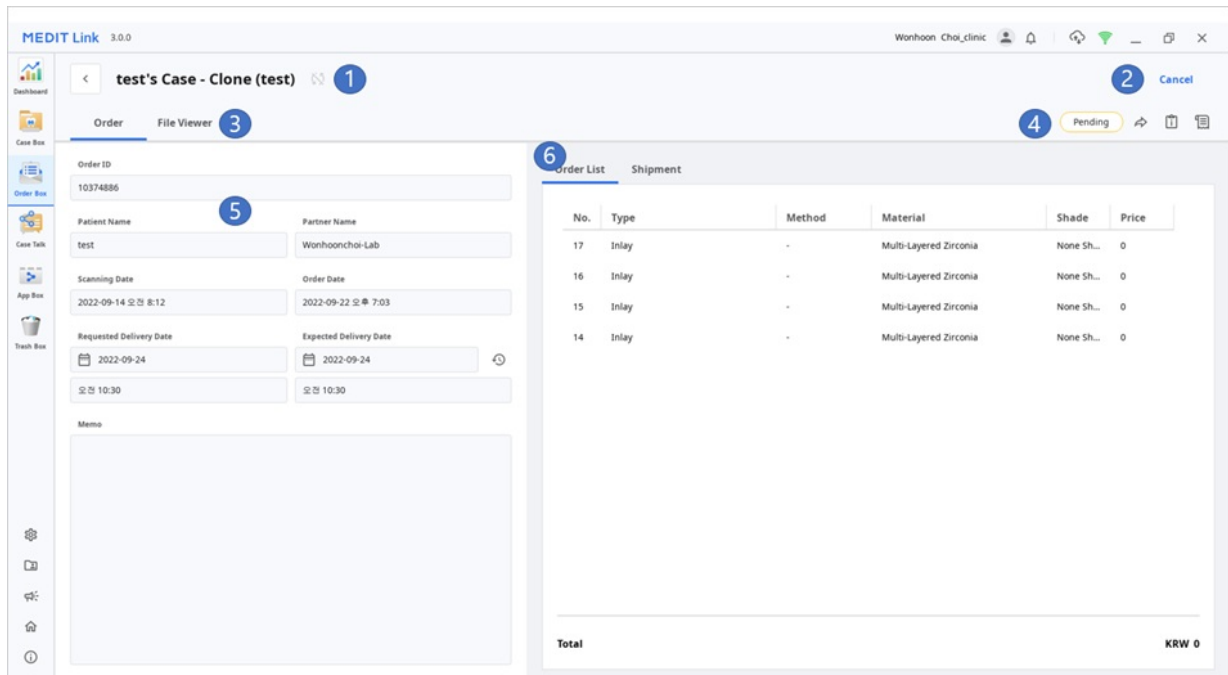

1	Muestra el nombre del caso y el nombre del paciente.
2	Proporciona funciones para la gestión de los pedidos (aceptar/cancelar; enviar/recibir).
3	Muestra las pestañas disponibles: Pedir, Visor de archivos
4	Muestra funciones para la gestión de casos y archivos: estado del caso, accesos directos para información detallada, información del caso, nota & etiquetas, etc.
5	Muestra la información detallada del pedido, incluyendo el número de pedido, nombre del paciente, nombre del socio, fecha de escaneo, fecha de pedido, fecha de entrega y nota & etiquetas.
6	Muestra la información del producto pedido y el estado de la entrega.

Pestañas en Order Box/In Box

Pedido	Visor de archivos
Compruebe la información detallada relacionada con el pedido, como el número del pedido, el nombre del paciente, el nombre de la cuenta, la fecha del escaneo, la fecha del pedido, la fecha de entrega, notas y etiquetas.	Visualice los archivos generados por las operaciones de escaneo/CAD. El visor de archivos muestra y gestiona los modelos 3D y las imágenes 2D adquiridos o adjuntos.

Case Talk

Los casos creados en Medit Link pueden compartirse con las personas que especifique, con cualquiera que tenga el enlace compartido o con los miembros registrados de Medit Link.


El usuario puede ver una lista de todos los casos compartidos a través de Case Talk en la App de Medit Link y Medit Link Web.

iNota

El servicio Case Talk requiere de conexión a Internet.

⚠ Precaución

Los datos eliminados de la Trash Box se borrarán permanentemente de su PC y del servidor y no podrán ser recuperados.

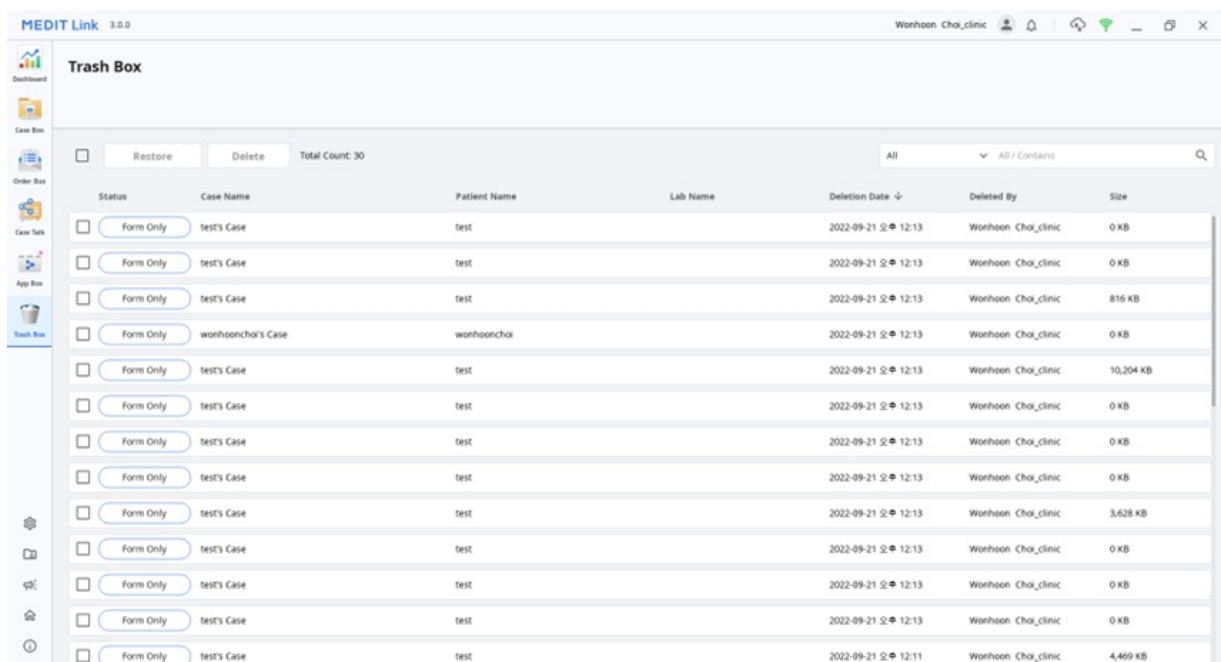


Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Configuración

Consulte [Medit Link App > Configuración](#) para obtener información detallada sobre la ventana Configuración.

Gestión de los pacientes

Puede añadir, editar, eliminar o fusionar pacientes en la ventana Gestión de pacientes.

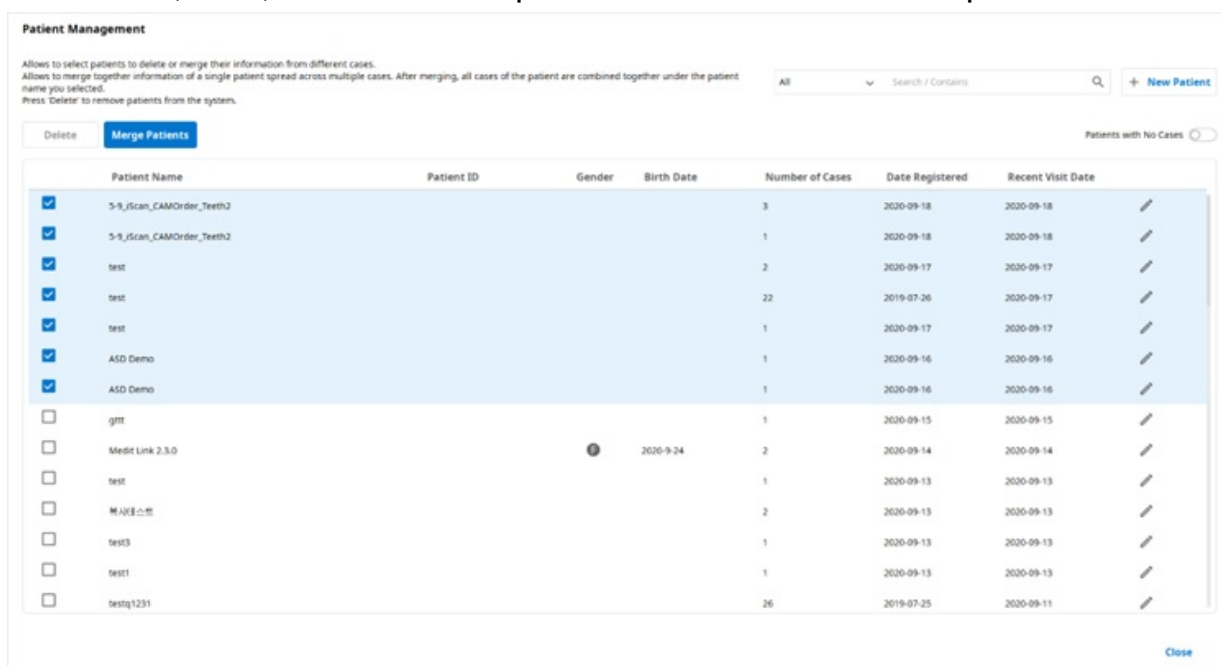

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
5-9_Scan_CAMOrder_Tooth2				3	2020-09-18	2020-09-18
5-9_Scan_CAMOrder_Tooth2				1	2020-09-18	2020-09-18
test				2	2020-09-17	2020-09-17
test				22	2019-07-26	2020-09-17
test				1	2020-09-17	2020-09-17
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
grrt				1	2020-09-15	2020-09-15
Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14
test				1	2020-09-13	2020-09-13
test3				2	2020-09-13	2020-09-13
test1				1	2020-09-13	2020-09-13
test1231				26	2019-07-25	2020-09-11

Añadir nuevo paciente

1. Haga clic en "Nuevo paciente".

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Rellene la información requerida en el cuadro de diálogo Nuevo Paciente, y luego haga clic en "Guardar".

Eliminar paciente

iNota

Puede eliminar un paciente solo cuando no haya casos para él.

1. Seleccione el paciente a eliminar de la lista.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press "Delete" to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.J Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	salkjadoklf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. Haga clic en "Eliminar".

Fusionar pacientes

Puede fusionar todos los casos de múltiples pacientes en un solo paciente.

1. Seleccione los pacientes de la lista que quiere fusionar.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

Search / Contains

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				8	2020-09-18	2020-09-18	☐
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	☐
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	☐
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	☐
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	☐
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	☐
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	☐
☒	grrr				1	2020-09-15	2020-09-15	☐
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	☐
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	test1231				26	2019-07-25	2020-09-11	☐

- Haga clic en "Fusionar pacientes".
- Seleccione el paciente de destino en el que desea fusionar todos los casos.
- Todos los casos se fusionan en el paciente de destino y se mantiene la información del paciente de destino.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

- Haga clic en "Aplicar" para proceder a la fusión.

Noticias & Actualizaciones

Puede consultar los avisos importantes de Medit y las actualizaciones del programa de software Medit.

Ir a Medit Link web

Aterrizará en Medit Link Web con la cuenta con la que esté conectado en ese momento.

Información Medit

Puede obtener varias informaciones sobre el uso de Medit Link. Acceda a los recursos educativos e informativos de Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube y Medit Help Center.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



Configuración

General

Ofrece opciones para la configuración general del sistema.

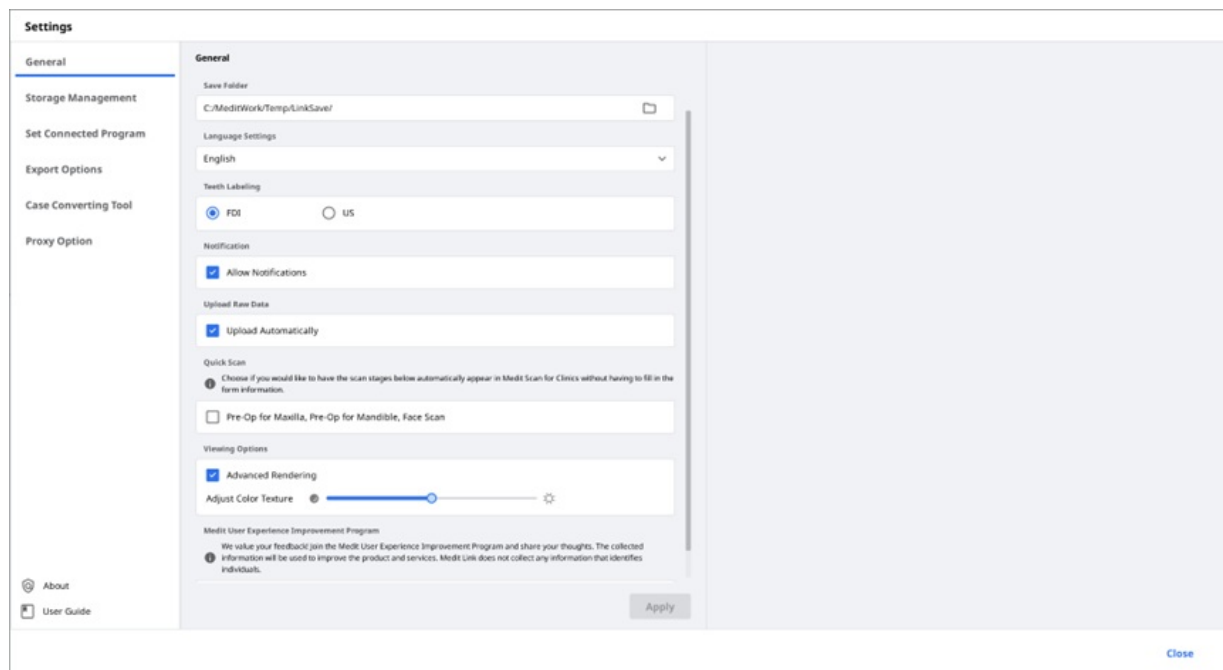


Carpeta de guardado	Especifique una carpeta para almacenar los resultados de los datos generados en Medit Link y los programas conectados.	
Configuración de Idiomas	Seleccione el idioma del programa.	
Nomenclatura dental	Seleccione un sistema de etiquetado de dientes entre la FDA y EE.	
Notificaciones	Cuando está activado, recibirá notificaciones para las actualizaciones del programa.	
Cargar datos sin procesar	Cuando está activado, los datos sin procesar se suben automáticamente a la nube. Esto ayuda a hacer una copia de seguridad de los datos originales y realizar el escaneo sin problemas cuando se utiliza Medit Link con la misma cuenta en otro PC. La copia de seguridad en la nube de los datos originales sólo se aplica a los datos adquiridos en Medit Scan for Clinics.	
Escaneo rápido	Escoja si quiere que los escenarios de escaneo abajo aparezcan automáticamente en Medit Scan for Clinics sin necesidad de rellenar el formulario de información. • Pre operación para el maxilar • Pre operación para la mandíbula • Escaneo facial	
Opciones de visualización	Renderización avanzada	Cuando está activado, el modelo 3D se muestra con una renderización más vívida y realista.
	Ajustar la textura del color	Ajustar el brillo del modelo 3D. * Los colores resultantes pueden diferir ligeramente de Medit Link al abrir los mismos datos con otro software.

Programa de mejora de la experiencia del usuario de Medit

- Sea parte del programa de mejora de la experiencia del usuario de Medit.
- Utilizamos la información recogida para mejorar nuestros productos y servicios.
 - No recogemos ninguna información que identifique a las personas.

Gestionar Almacenamiento

Verifique y gestione el almacenamiento local y de la nube.

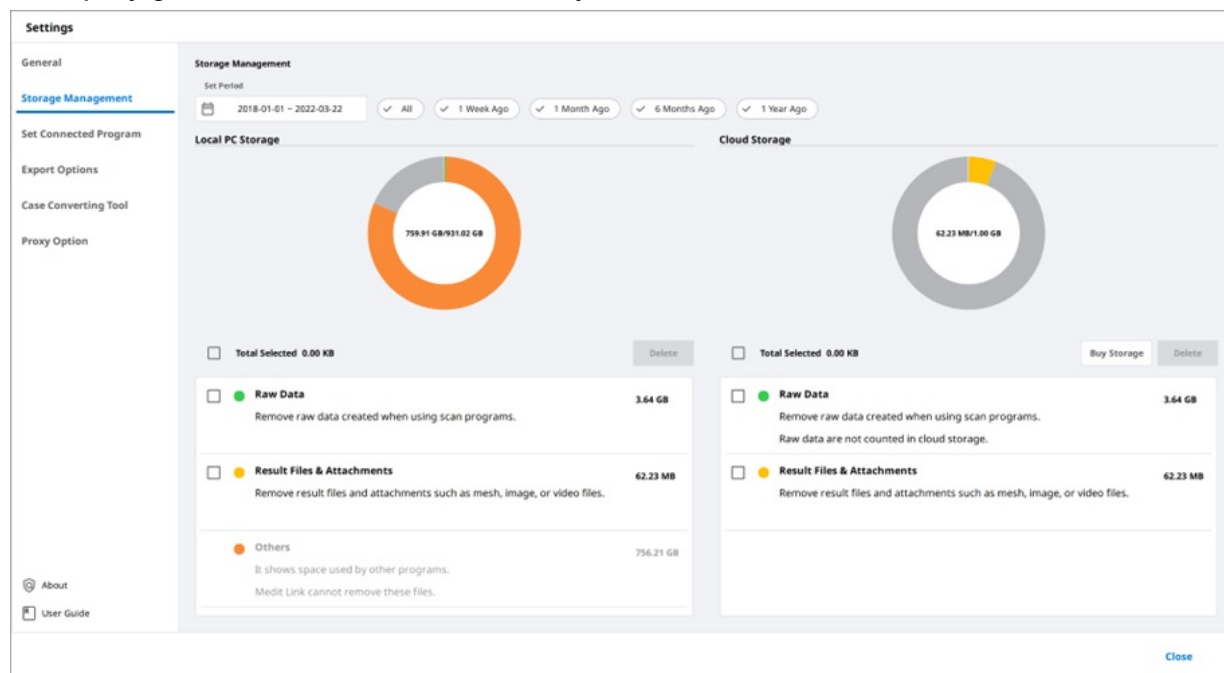

Escoger periodo

Establezca el período específico para eliminar los datos creados dentro del plazo indicado a continuación.

- Todos: Ver todos los archivos.
- Hace 1 semana: Ver los archivos que han pasado una semana después de la creación.
- Hace 1 mes: Ver los archivos que han pasado un mes desde su creación.
- Hace 6 meses: Ver los archivos que han pasado seis meses desde su creación.
- Hace 1 año: Ver los archivos que han pasado un año desde su creación.

Almacenamiento local

Gestiona el espacio de almacenamiento del PC.

Datos sin procesar	Elimine los datos sin procesar seleccionados del PC. Si los datos sin procesar ya están subidos a la nube, puede descargarlos y utilizarlos cuando quiera.
Resultados & Adjunto	Elimine los archivos de resultados y adjuntos del PC, como mesh, imágenes y vídeos. Si estos archivos ya están subidos a la nube, puede descargarlos y utilizarlos cuando quiera.
Otros	Vea los archivos utilizados para el funcionamiento del sistema y otros programas. Muestra el almacenamiento de su PC. No puede eliminar estos archivos de Medit Link.

Eliminar	Quite los archivos seleccionados del PC.
----------	--


Almacenamiento en la nube

Gestione el almacenamiento en la nube.

Datos sin procesar	Los datos sin procesar no ocupan espacio en el almacenamiento en la nube, por lo que no aparecerán en el gráfico pi. Pero puede gestionar los datos sin procesar desde aquí si es necesario, por ejemplo, borrarlos para proteger la información privada del paciente, etc.
Resultados & Adjunto	El resultado y los archivos adjuntos ocupan espacio de almacenamiento en la nube. Si la nube está llena, puede conseguir más espacio de almacenamiento eliminando los archivos innecesarios.
Comprar almacenamiento	Si tiene un plan Estándar, suscríbase al Premium para ampliar su almacenamiento en la nube.
Eliminar	Elimina los archivos seleccionados del almacenamiento en la nube para liberar espacio.

Establecer Programa Conectado

Gestione los programas de apoyo a la integración en Medit Link.

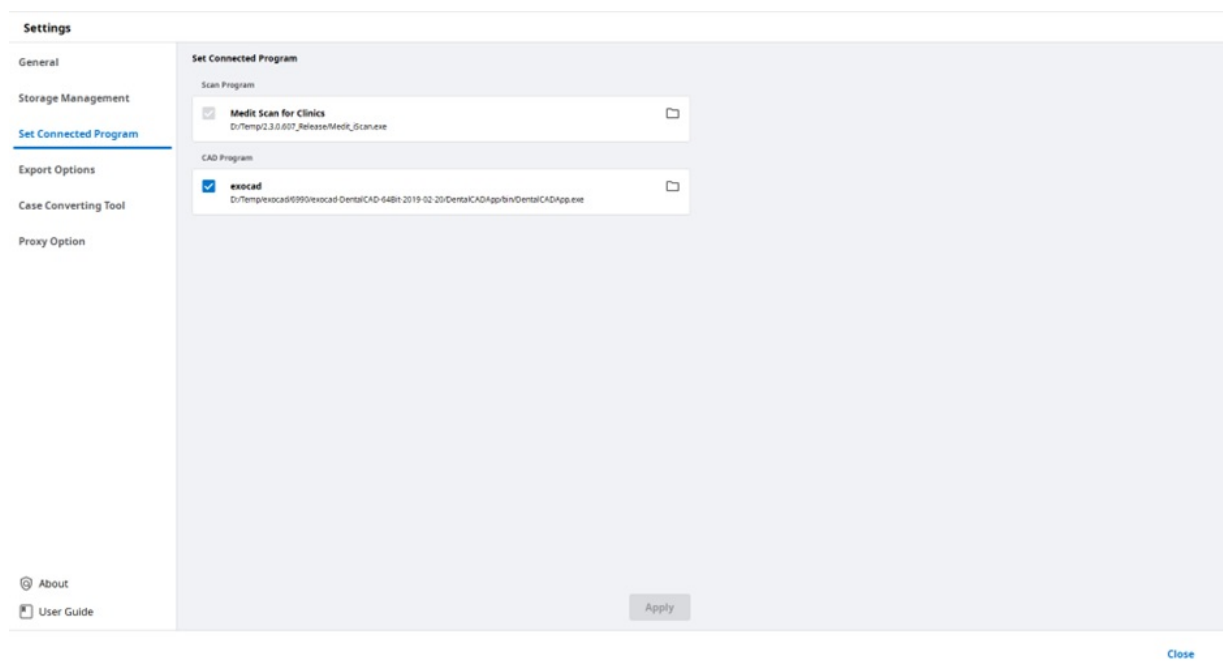

Puede conectar los siguientes programas:

	Cuenta Clinic	Cuenta Lab
Programa de escaneo	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.
Programa CAD	exocad	exocad

iNota

La integración de los siguientes servicios no está disponible para Medit Link para Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opciones Exportar

Establezca cómo exportar archivos desde Medit Link.


The screenshot displays the 'Settings' window with the 'Export Options' tab selected. The left sidebar contains links for General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options (active), Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is divided into several sections: CAD Type (Maestro), Export Files To (C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/), Mesh Format (Convert mesh files to the below formats, with PLY selected and 'Do not convert the attached files' checked), Image Format (Convert images to the below format, with PNG selected), Compress & Combine (Compress Files and Combine Individual Mesh options), and Options when same folder or file already exists (Always ask when exporting selected). On the right, there are two sections for naming rules: 'Rule for Folder Name' and 'Rule for File Name', each with fields for Creation Date, Scanning Date, Order Date, Patient Name, Case Name, Partner Name, Patient ID, and Order ID. An 'Apply' button is at the bottom right, and a 'Close' button is at the bottom center.

Tipo del CAD	Seleccione el programa CAD que desea utilizar para el diseño. El programa ajustará los resultados basándose en su selección, permitiéndole proceder con el diseño sin ninguna alineación de ejes adicional.
Exportar archivos a	Especifique la ruta donde desea almacenar los resultados.
Formato de la Mesh	Especifique el formato del archivo de la mesh final.
Formato de imagen	Especifique el formato de los archivos de imagen exportados.
Comprimir & combinar	Comprimir archivos: Comprimir todos los resultados en un solo archivo. Combinar mesh individuales: Combinar el resultado del maxilar o la mandíbula en un solo archivo. Cuando utilice algunos programas que no pueden importar y trabajar con varios archivos, puede fusionarlos en uno solo para trabajar en esos programas.
Opciones cuando la misma carpeta o archivo ya existe.	Elija la acción por defecto para los casos en que exista la misma carpeta o nombre de archivo en la ruta de destino. • Preguntar siempre al exportar. • Exportar un nuevo archivo y sobrescribir los archivos existentes. El archivo almacenado actualmente se perderá. • Crear una carpeta y exportar los archivos

Regla de nomenclatura para carpetas	Defina reglas para crear un nombre de carpeta al exportar archivos. Las reglas establecidas se aplicarán al nombramiento de carpetas, y el archivo exportado se guardará en la carpeta creada. La siguiente información puede utilizarse para establecer la regla. • Cuenta Clinic Fecha de creación del caso, fecha de escaneo, fecha del pedido, nombre del paciente, nombre del caso, nombre del socio, ID del paciente, ID del pedido • Cuenta Lab Fecha de creación del caso, fecha de escaneo, fecha del pedido, nombre del paciente, nombre del caso, nombre del socio, ID del pedido
Regla de nomenclatura para archivos	Defina reglas para el nombre de archivo exportado. La siguiente información se puede utilizar para establecer la regla. • Cuenta Clinic Fecha de creación del caso, fecha de escaneo, fecha del pedido, nombre del paciente, nombre del caso, nombre del socio, ID del paciente, ID del pedido • Cuenta Lab Fecha de creación del caso, fecha de escaneo, fecha del pedido, nombre del paciente, nombre del caso, nombre del socio, ID del pedido


Herramienta de conversión de casos

Mover casos entre diferentes cuentas.

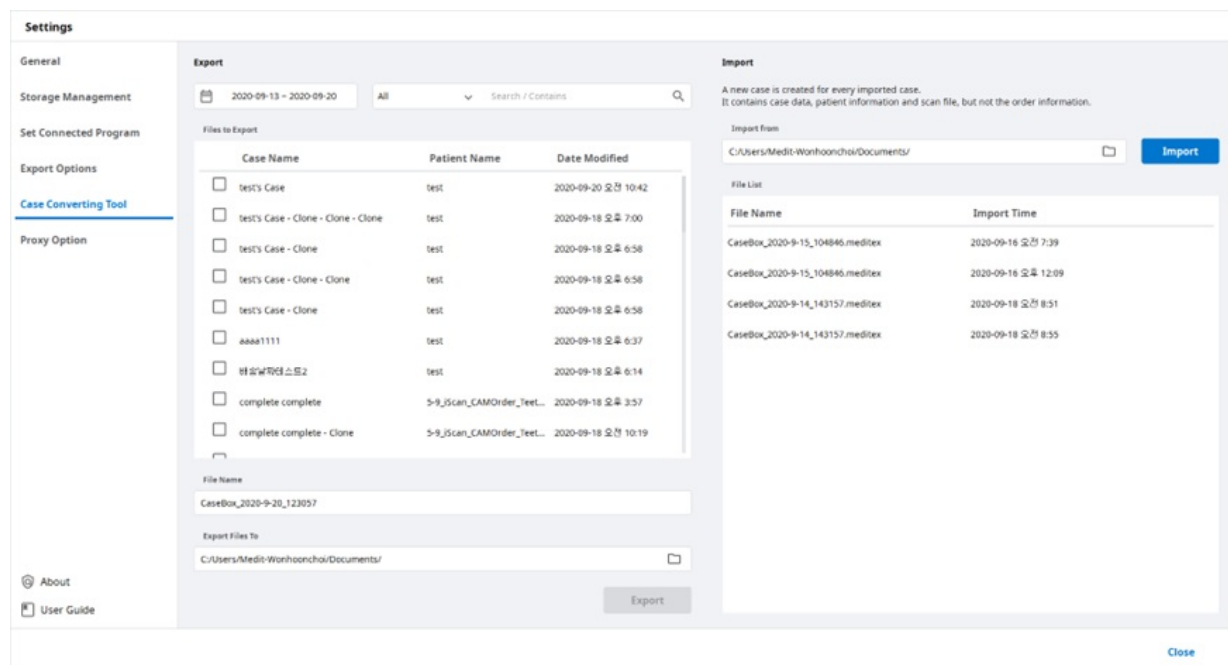


Cómo utilizar la herramienta de conversión de casos

1. Abra Medit Link y haga clic en "Configuración".

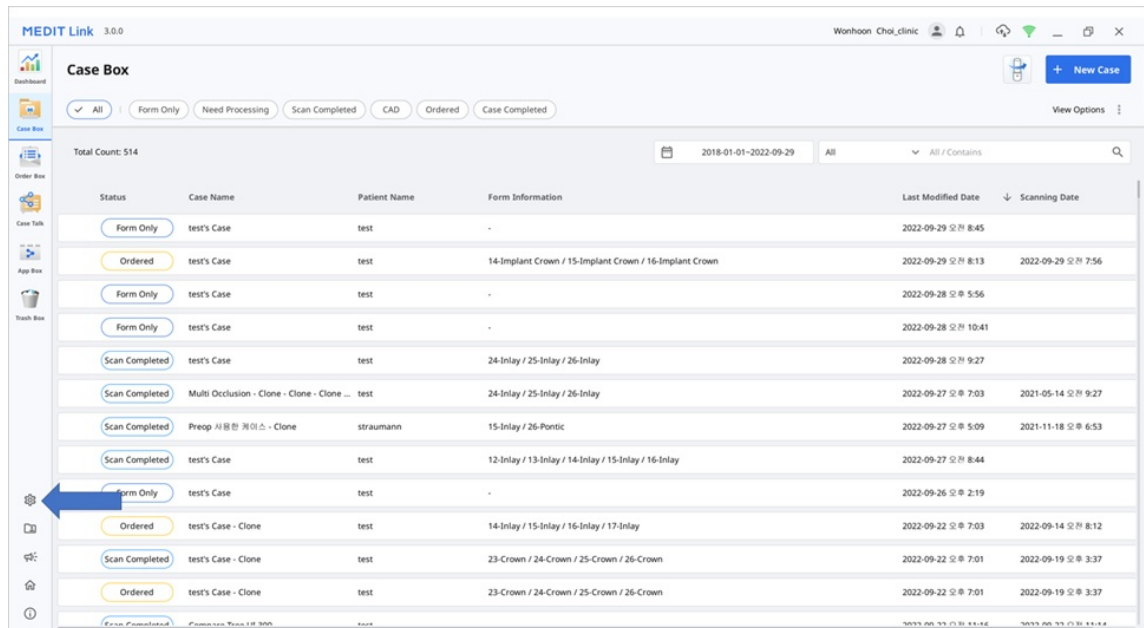


2. Seleccione la sección "Herramienta de conversión de casos" en el menú de la izquierda.

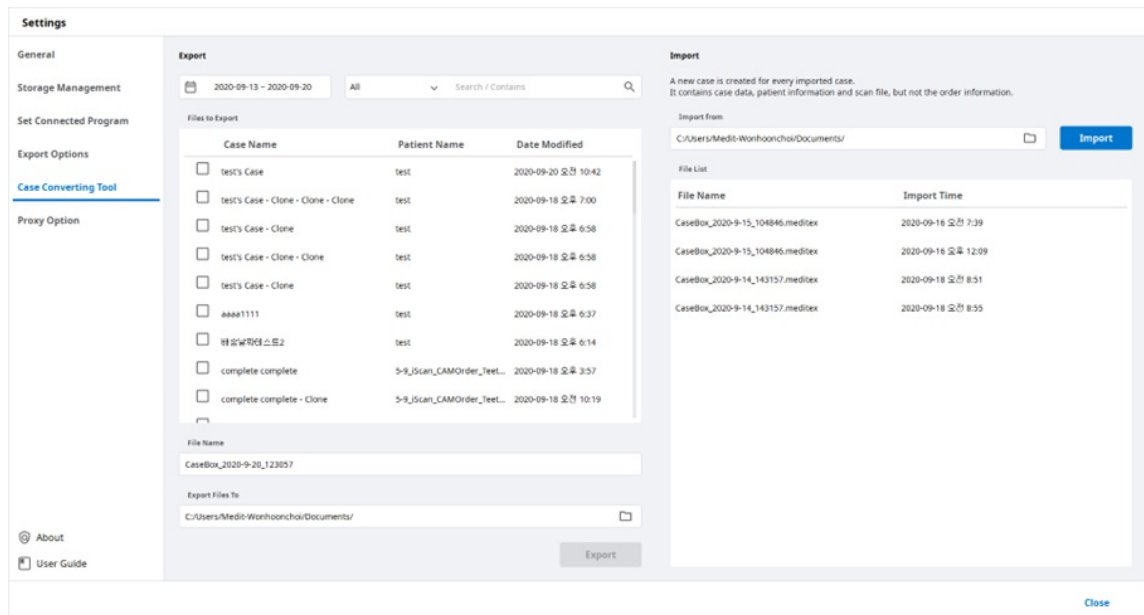

3. En la sección de importación, haga clic en el icono de carpeta para buscar en su PC el archivo .meditex que desea importar.


4. Haga clic en el botón "Importar" y compruebe el archivo importado en la lista de archivos que aparece a continuación.

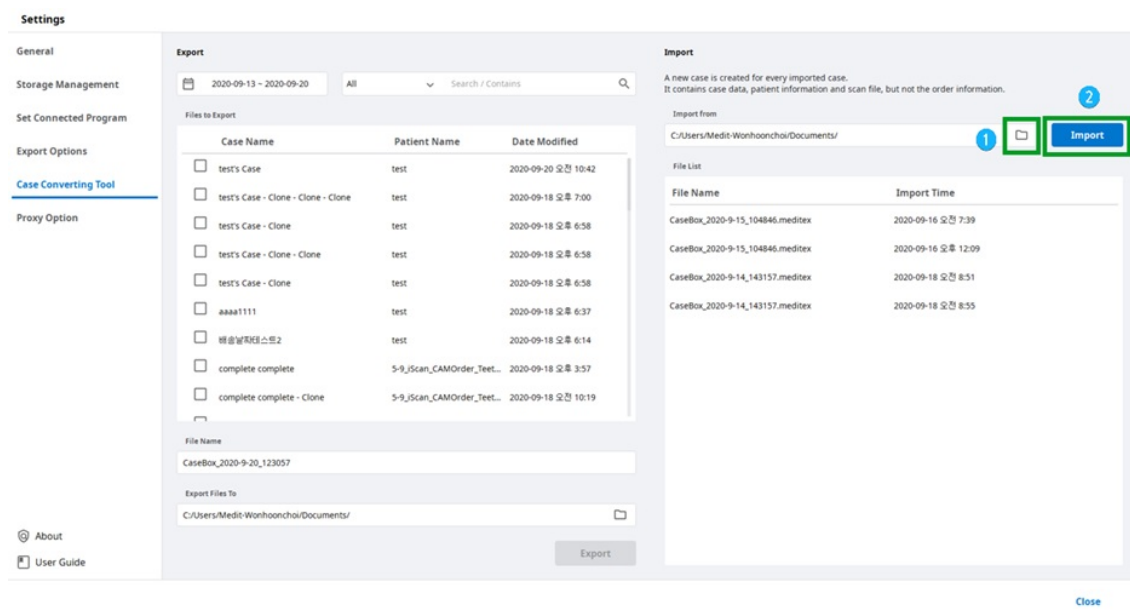

5. El caso importado también aparecerá en su Case Box (cuenta Clinic) o Work Box (cuenta Lab).


Opción de Proxy

En algunos entornos de red limitados, puede cambiar la configuración de la red.

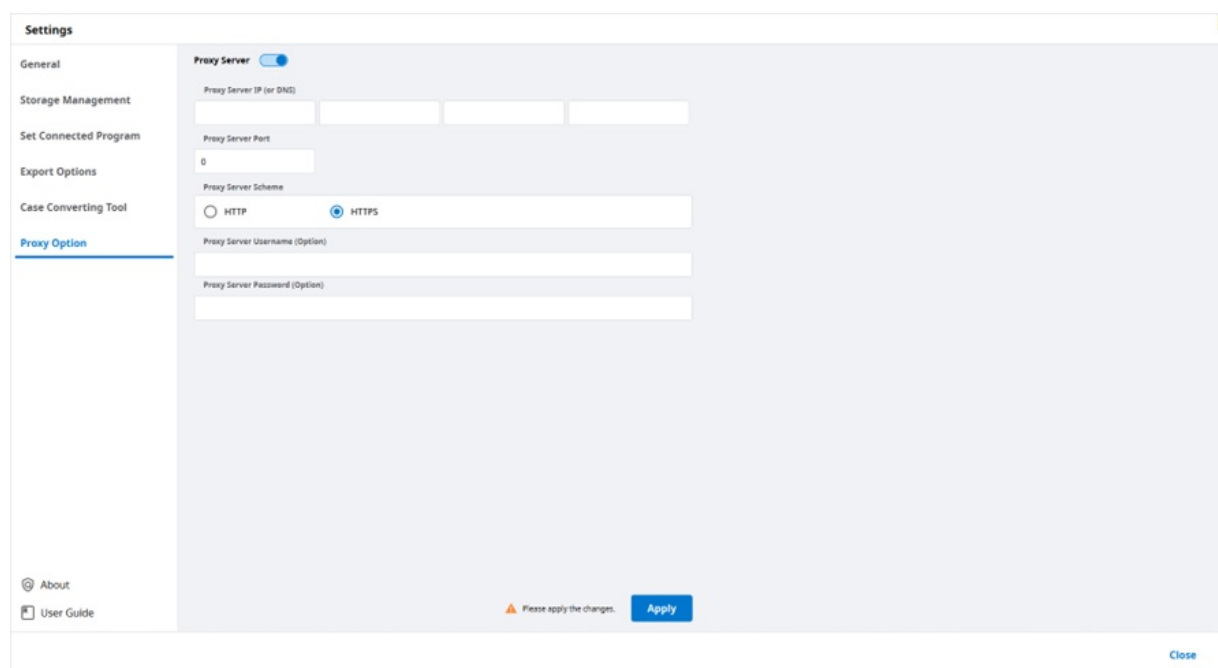

Acerca de

Muestra información detallada sobre Medit Link.

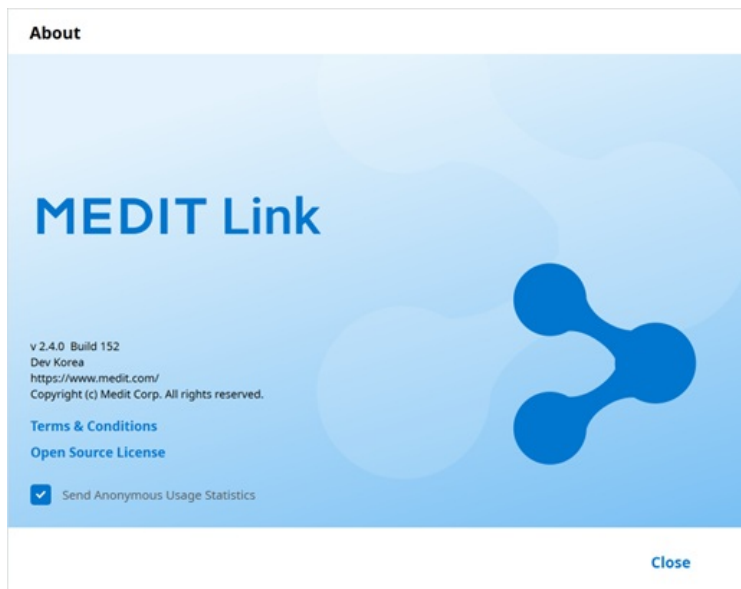

Guía de usuario

Obtenga la guía del usuario para Medit Link.

Para abrir la guía del usuario es necesaria una conexión a Internet.

Visor de archivos

El Visor de archivos agrupa y muestra varios datos, incluyendo los datos adquiridos de los programas vinculados a Medit Link y los datos adjuntados por los usuarios.



Proporciona funciones básicas de gestión como mostrar/ocultar datos, ajustar la opacidad y eliminar datos.

Admite vistas previas de archivos en los siguientes formatos:

- Datos 3D: STL, OBJ, PLY
- Imágenes 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Archivos de vídeo: MKV, MP4, AVI, WMV

Árbol de datos

Puede agrupar y visualizar todos los datos del caso en el árbol de datos. También puede mostrar/ocultar datos, ajustar la transparencia y eliminar datos del árbol de datos.

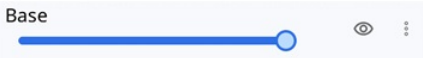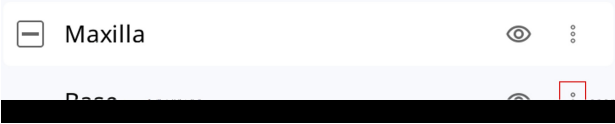	Mostrar/Ocultar	Puede mostrar u ocultar los datos.
	Opacidad	La barra deslizante aparece cuando se hace clic en uno de los datos del árbol de datos. Puede ajustar la opacidad de los datos mostrados moviendo la barra deslizante. 
	Más	Al hacer clic en el icono "Más" se muestran las funciones adicionales disponibles.  • Mostrar solo una parte: Oculta todos los demás datos pero muestra sólo los datos correspondientes. • Ocultar: Oculta los datos. • Duplicar: Copiar los datos y añadirlos al grupo de adjuntos. • Exportar: Exporta los archivos seleccionados. • Renombrar: Cambiar el nombre de los datos. • Eliminar: Borra los datos.





¡Nota

Puede renombrar los datos cuando esté en línea.

Herramientas de control de modelos

Control de modelos 3D

	Panorámica	Mueve el modelo.
---	------------	------------------

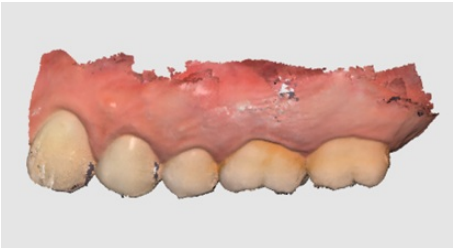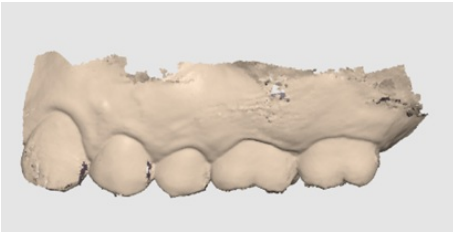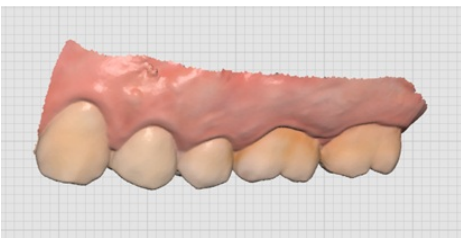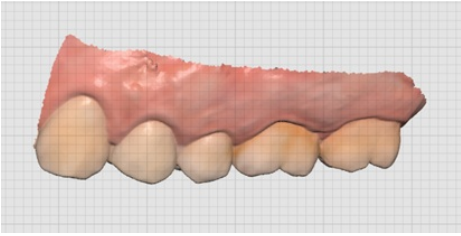	Rotar		Gira el modelo.
	Acercar/Alejar		Acerca y aleja el modelo.
	Ajustar zoom		Coloca el modelo en el centro de la pantalla.
	Modo de visualización del modelo	Encender textura	Muestra los datos en colores de textura reales. 
		Apagar textura	Muestra los datos en un solo color. 
	Configuración de la cuadrícula (mm)	Cuadrícula encendida	Muestra la cuadrícula en el fondo. 
		Superposición encendida	Superpone la cuadrícula sobre el modelo. 
		Cuadrícula apagada	Ocultar la cuadrícula.


Control de imágenes 2D

	Imagen siguiente/anterior	Moverse entre las imágenes.
	Editar	Edita la imagen.
	Pellizcar/pegar ventana	Puede separar la ventana de la imagen y ajustarla a la posición deseada. Puede cambiar el tamaño de la ventana. Cuando la ventana vuelve a su ubicación original, recupera su tamaño predeterminado.

Herramientas de función


Captura de imagen y notas

Capture la pantalla actual como una imagen 2D, dibuje sobre ella o añade notas.
Puede guardarlo como un archivo con sus notas y enviarlo como referencia.

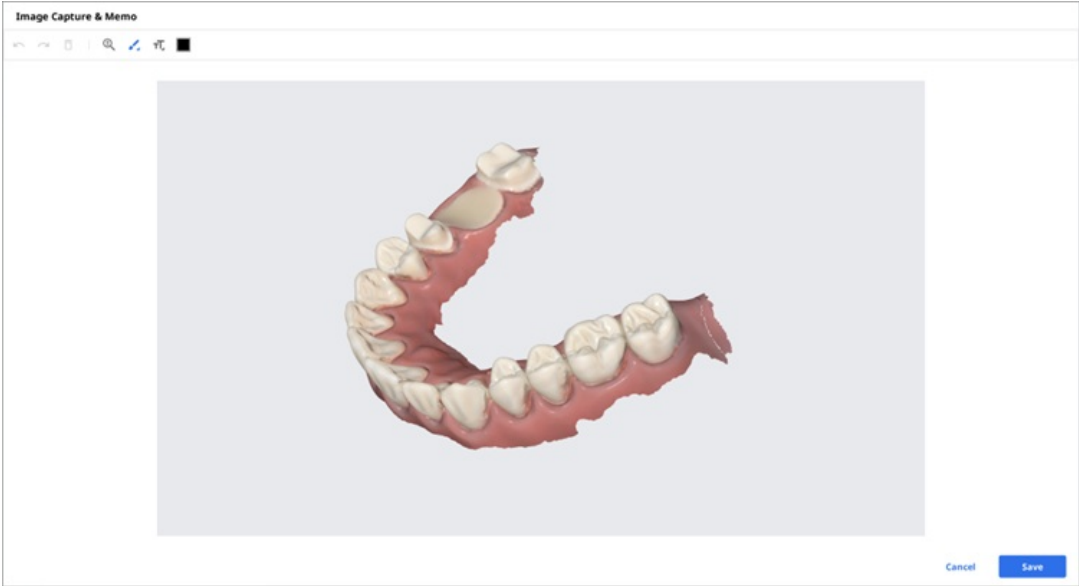


Captura de ortodoncia

Capture las imágenes en la dirección de visualización actual y arriba/abajo/izquierda/derecha desde la dirección de visualización actual.

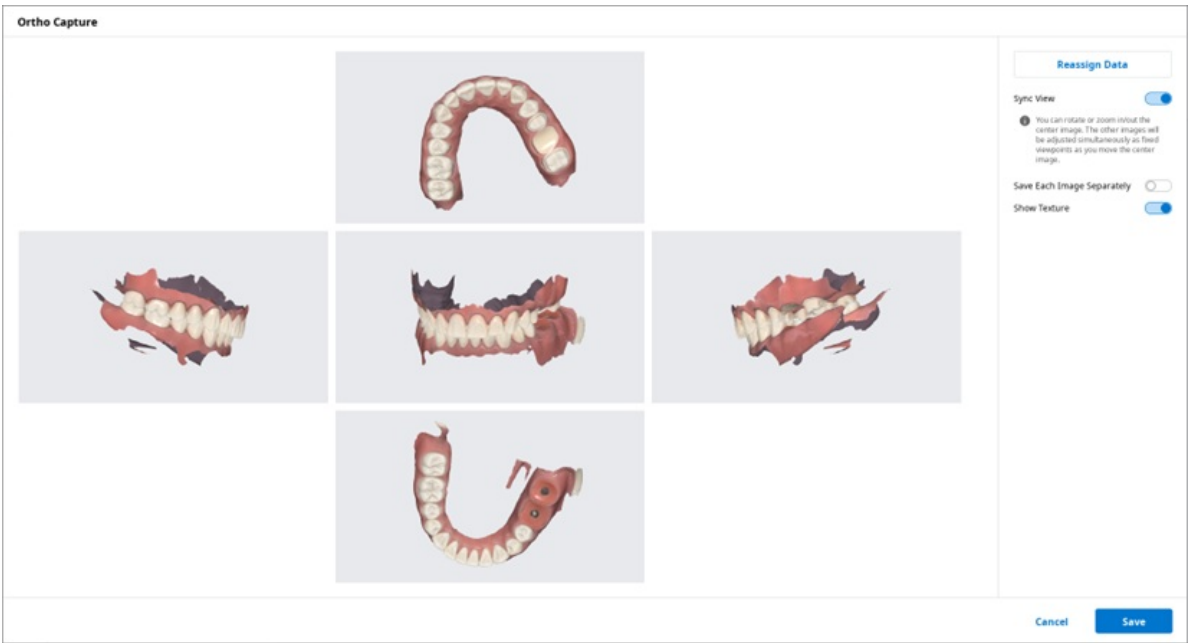


Vista de sincronización	Cuando está activado, puedes girar o acercar/alejar la imagen central. Las otras imágenes se ajustarán simultáneamente como puntos de vista fijos a medida que usted mueva la imagen central. Cuando está desactivada, puede desplazar, girar o acercar/alejar todas las imágenes individualmente.
-------------------------	--

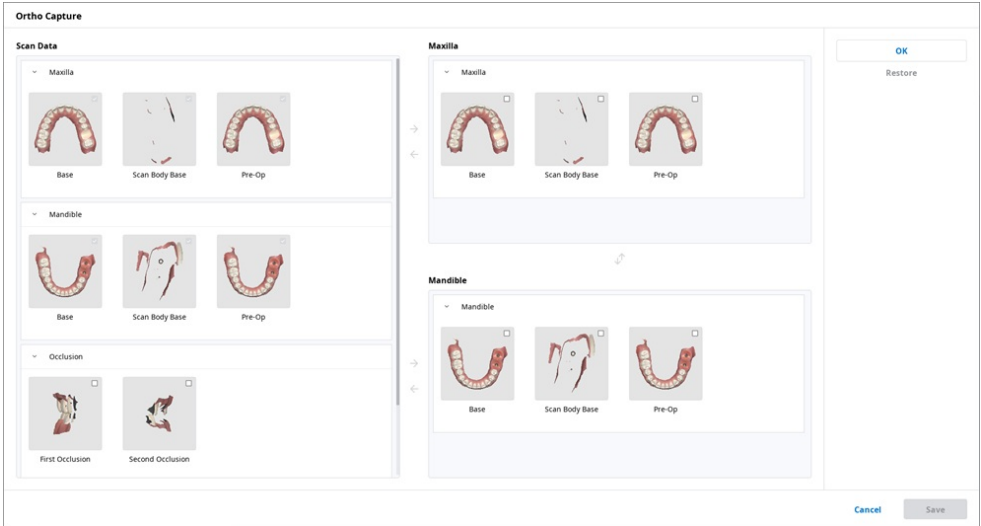Guardar cada imagen por separado	Guarda cada imagen en alta resolución.
Mostrar textura	Activa/desactiva la textura para el modelo.
Volver a asignar datos	Cambie los datos del maxilar/mandíbula con la función Volver a asignar datos. Puede utilizar los datos modificados para crear y utilizar las imágenes resultantes de Captura de ortodoncia.  • Datos de escaneo: Se muestran todos los datos de escaneo del caso. • Maxilar: se muestran los datos que ha seleccionado para el maxilar. • Mandíbula: Se muestran los datos seleccionados para la mandíbula.


Rellenar agujeros

Rellena agujeros en los datos mesh 3D.

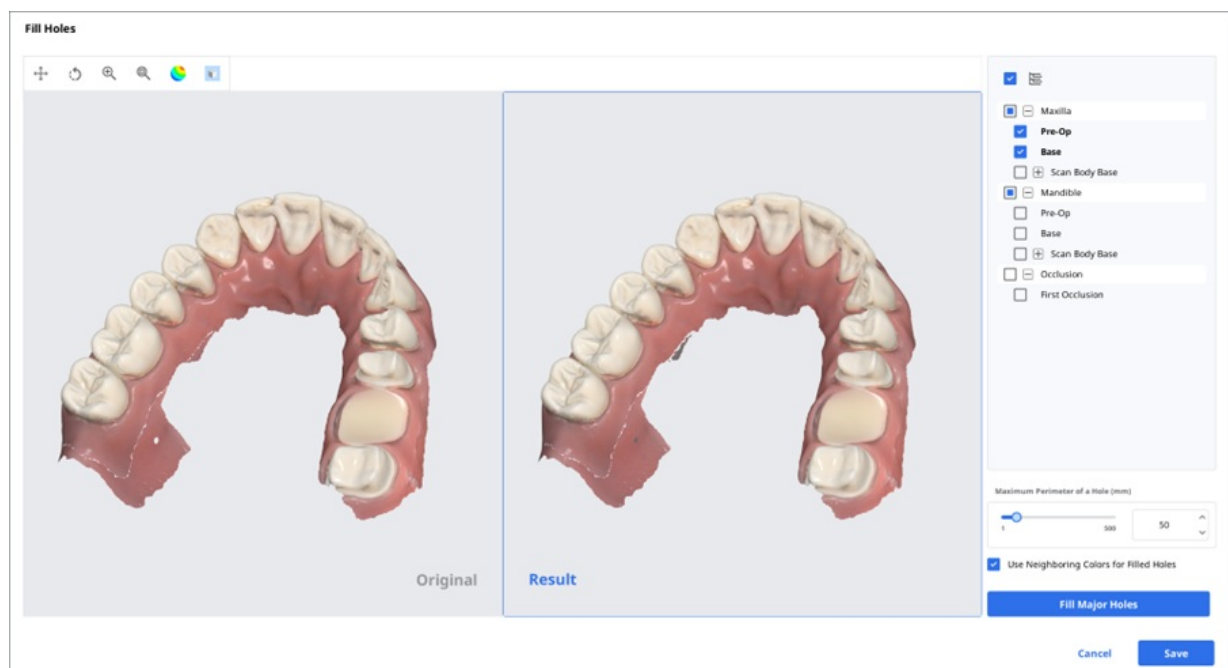

Recortar


El recorte proporciona varias herramientas para editar los datos.

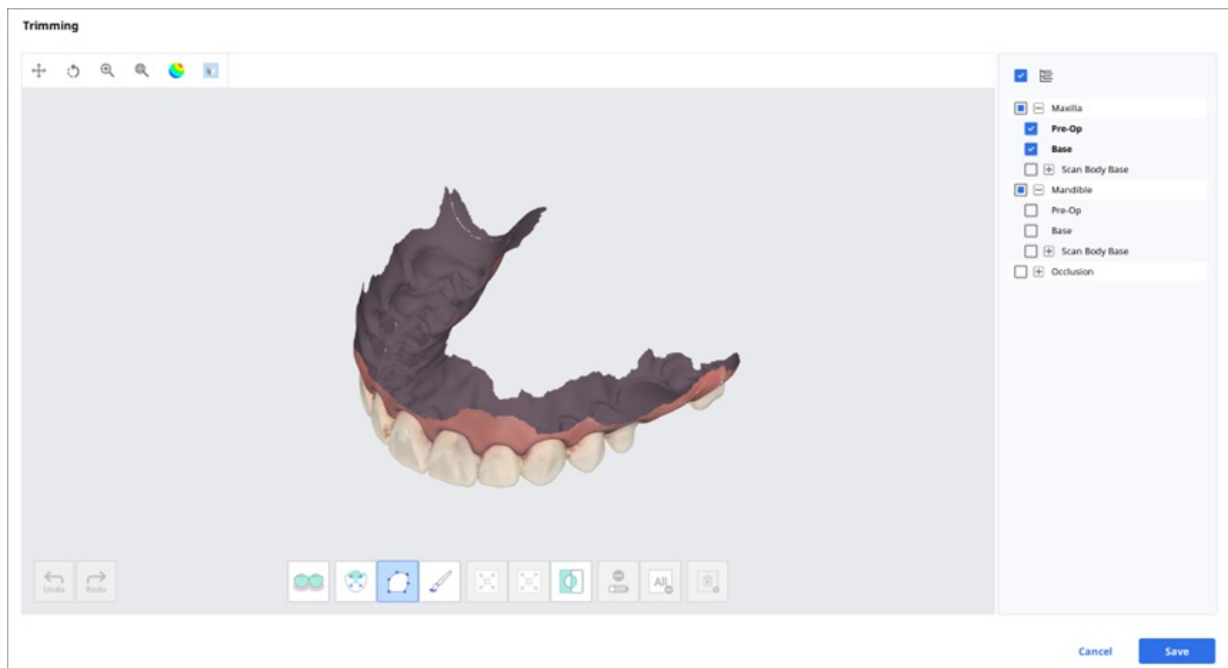

Los datos 3D seleccionados pueden editarse mediante diferentes herramientas situadas en la parte inferior de la ventana.

Selección		Selección de diente inteligente	Selecciona automáticamente todos los dientes de la arcada dejando fuera las partes gingivales. ¡Nota Esta función sólo está disponible para los datos de escaneo que han sido adquiridos por Medit Scan for Clinics con la opción "Utilizar GPU" activada.
		Selección inteligente de un solo diente	Selecciona automáticamente el área de un solo diente dejando fuera las partes gingivales. Haga clic, pulse y arrastre el ratón sobre el diente.
		Seleccionar línea poligonal	Selecciona todos los elementos dentro de la línea poligonal de la pantalla.
		Selección con pincel	Selecciona todas las entidades de un trayecto dibujado a mano alzada en la pantalla. Sólo se seleccionará la cara frontal. El pincel está disponible en tres tamaños diferentes.
Ajuste del área seleccionada		Reducir área seleccionada	Reduce el área seleccionada cada vez que presiona el botón.
		Expandir área seleccionada	Expande el área seleccionada cada vez que presiona el botón.
		Invertir área seleccionada	Invierte la selección.
Deselección		Selección/Deselección	Cuando está activado, deseccione el área utilizando varias herramientas.
		Eliminar toda la selección	Elimina toda el área seleccionada.
		Eliminar área seleccionada	Elimina los datos del área seleccionada.

1. Seleccione el área que desea recortar con las herramientas de selección de áreas.

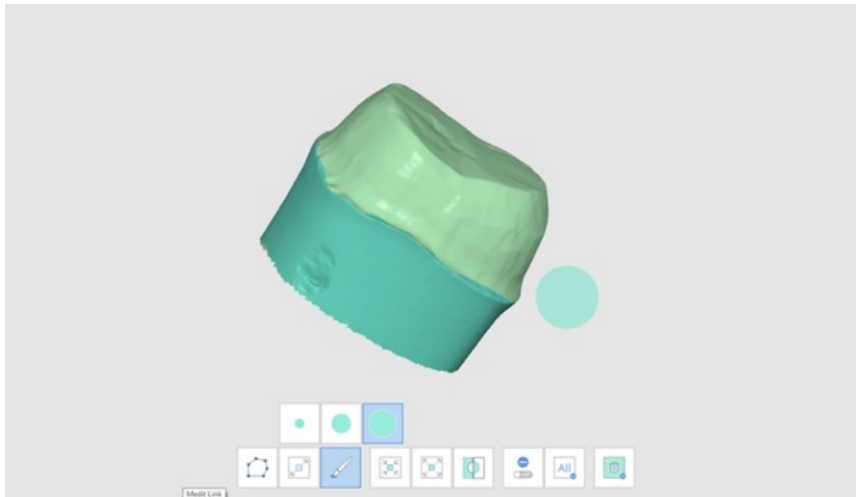


2. ¡Nota


La herramienta de recorte de línea poligonal selecciona todas las entidades dentro de una forma de línea poligonal dibujada en la pantalla, mientras que la herramienta de recorte Pincel selecciona sólo los datos de la cara frontal.

3. Puede invertir, reducir o ampliar la selección con las tres herramientas siguientes.


- Invertir área seleccionada

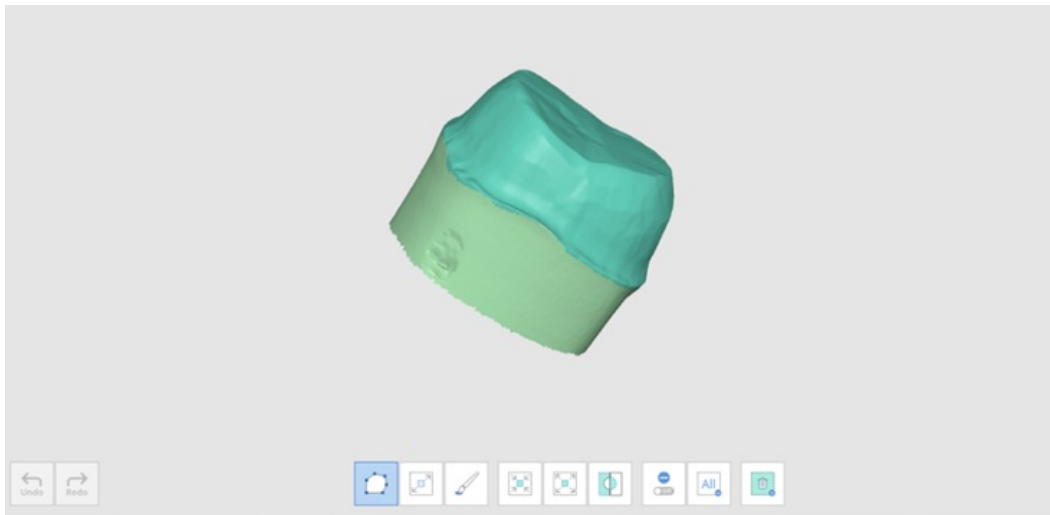

- Reducir área seleccionada

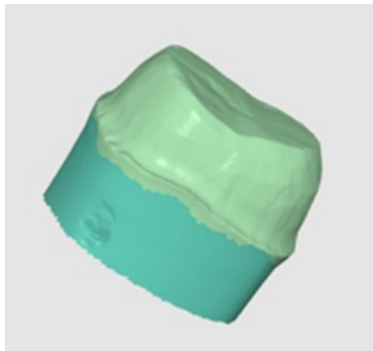


- Expandir área seleccionada

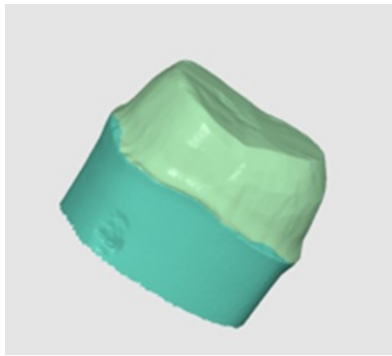

4. Puede anular la selección de las áreas seleccionadas con la herramienta Eliminar área seleccionada.




Optimizar la alineación de la oclusión

Optimiza la alineación de la oclusión. Puede elegir los datos de objetivo y ajustar la alineación de la oclusión.

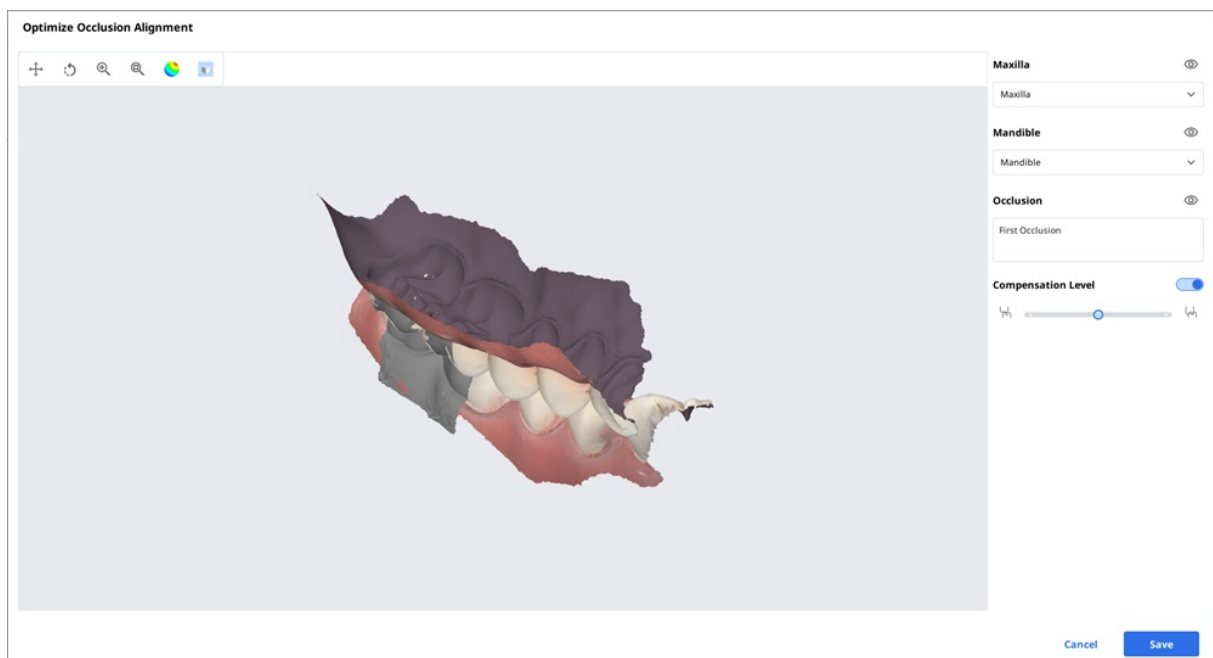


Nivel de compensación

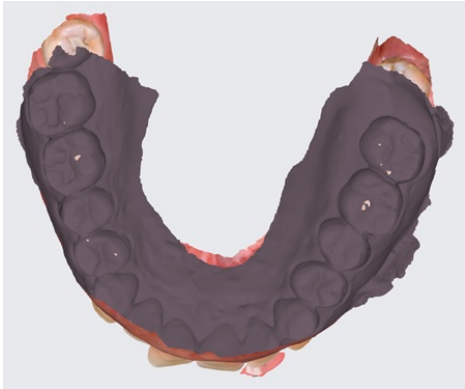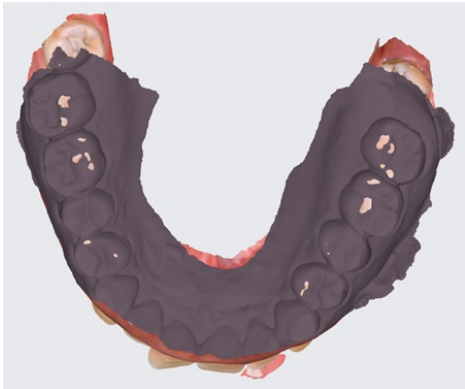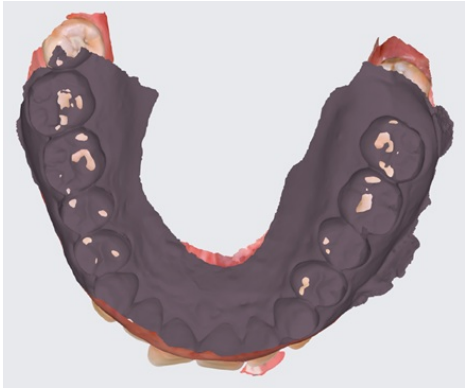

Medio	Compensation Level ☒ ☐	
Alto	Compensation Level ☒ ☐	
Apagado	Compensation Level ☐ ☒	

Movimiento mandibular

Puede reproducir los movimientos mandibulares registrados en Medit Scan for Clinics para ver los contactos oclusales dinámicos entre las denticiones superior e inferior.

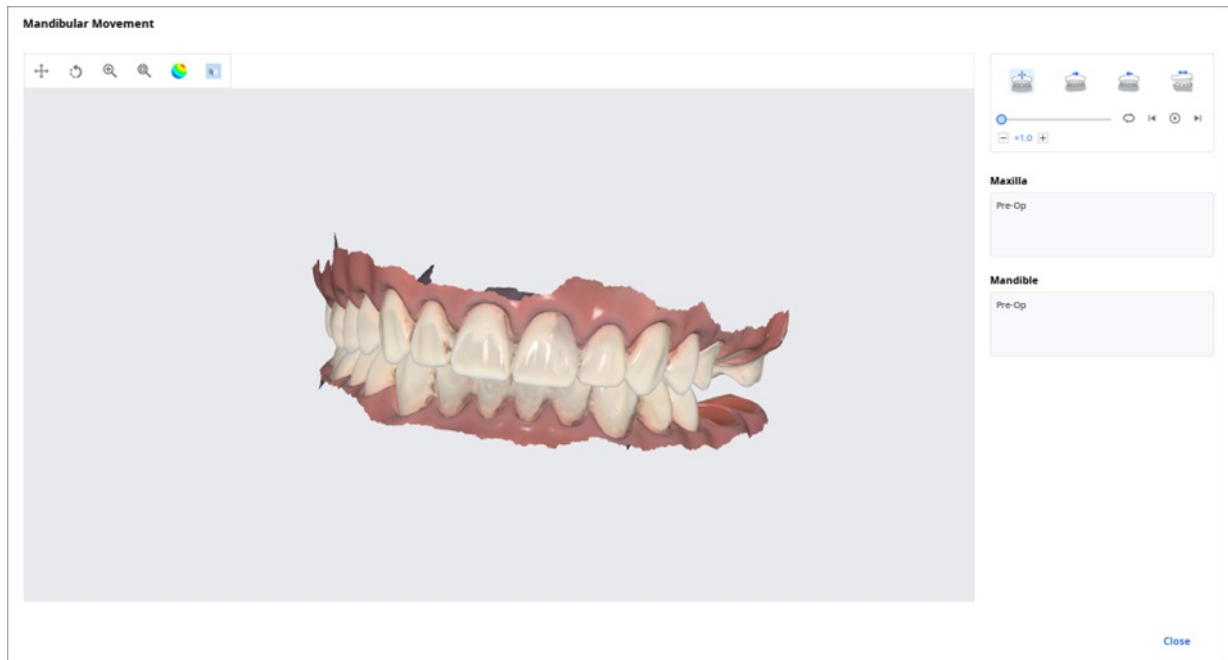

	Movimiento libre	Reproduce la grabación del movimiento mandibular libre.
	Movimiento lateral izquierdo	Reproduce la grabación de la mandíbula moviéndose hacia la izquierda.
	Movimiento lateral derecho	Reproduce la grabación de la mandíbula moviéndose hacia la derecha.
	Movimiento protuberante	Reproduce la grabación de la mandíbula moviéndose hacia delante.

Gestionar los datos de oclusión múltiple en el visor de archivos

Puede obtener múltiples resultados de los datos de oclusión de la aplicación Medit Scan.

Medit Link ofrece la función de gestionar los resultados a través del "Visor de archivos".

Cómo gestionar los resultados múltiples


Cuando el usuario obtiene múltiples resultados de oclusión de Medit Scan for Clinics, Medit Link proporciona la opción de seleccionar un resultado.

La lista de resultados aparece por nombre y puede seleccionar un elemento.

El modelo seleccionado se mostrará en el "Árbol de datos" y en el "Área de visualización de modelos".



Puede contraer la lista y cambiar el elemento utilizando los iconos de flecha.

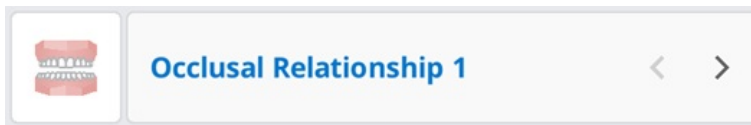

Opciones de visualización

Puede cambiar las Opciones de visualización para personalizar los diseños de la lista de casos en la Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtros de estado

Mostrar u ocultar cada filtro que representa el estado del caso. Los filtros de estado ocultos no se muestran en la pantalla de la Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Puede encontrar fácilmente el caso que necesita con los filtros mostrados.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

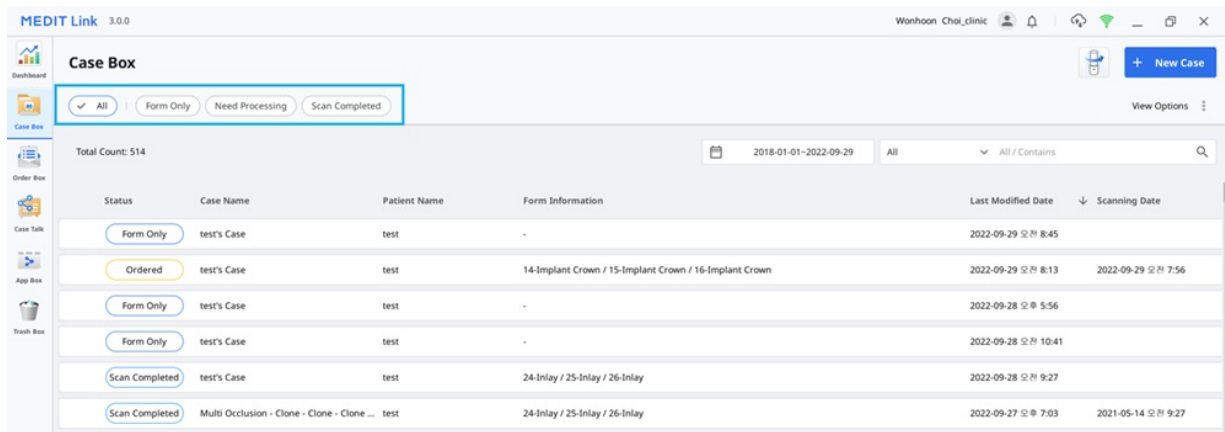

- Puede hacer clic en el estado que desea ver para mostrar sólo los casos en ese estado.
- Puede seleccionar varios estados a la vez.

Opciones de filtrado disponibles para cada Box:

Case Box	Todos/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	Todo/Pendiente/Cancelado/Rechazado/Aceptado/Enviado/ Caso completado
In Box	Todo/Pendiente/Cancelado/Rechazado/Aceptado/Listo/Enviado/Caso Completado
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	No es compatible

Elementos de la tabla

Seleccione los elementos que se mostrarán en la lista de casos en la Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Puede cambiar el orden de los elementos de la tabla o ajustar el ancho de las columnas de la tabla en la vista de lista para optimizarla al máximo para el entorno del usuario.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed


Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Tipo de vista

Cambie el tipo de vista entre la Vista en galería y la Vista de lista en la Case Box.

Vista en galería

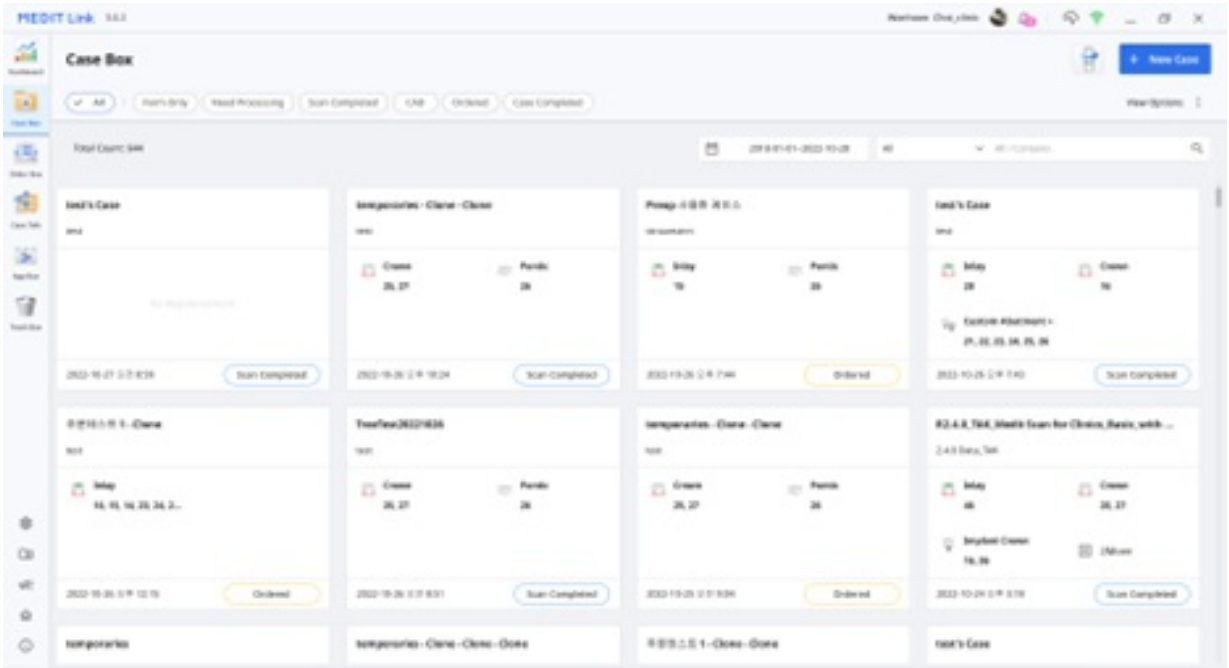

1

Medit Link2.3.0 Release

2

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

3

Implant Crown Zirconia

11, 12, 13, 14,...

Crown Metal

18, 19, 20, 21,...

Inlay Zirconia

3, 4, 5, 6, 7

+

1

4

2020-09-14 오전 7:43

5

Scan Completed

1	Nombre del caso
2	Nombre del paciente y fecha de nacimiento
3	Información del formulario
4	Fecha de escaneo
5	Estado del caso

87

Vista de lista

Status	Case Name	Patient Name	Appointment	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	Health Case	943	--	2022-10-26 17:13:02		
Scan Completed	Non-patient - Order - Order - Order	943	26-Order / 26-Order / 27-Order	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	943	12-Order / 12-Order / 13-Order / 13-Order	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Name Only	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Ordered	Health Case	943	13-Order / 13-Order / 13-Order	2022-10-27 17:13:02		Winnipeg Health
Scan Completed	Health Case	943	14-Order / 14-Order / 14-Order	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	943	15-Order / 15-Order / 15-Order / 15-Order	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	943	--	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	

Agrupar

Seleccione una opción de agrupación para clasificar y reorganizar los casos de la lista según la opción seleccionada.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None v

☒ None

☐ Patient Name

☐ Order Date

☐ Scanning Date

Sorting

Last Modified Date >

Para cada Box, están disponibles las siguientes opciones de clasificación:

Box	Agrupar
Case Box	Ninguno
	Nombre del paciente
	Fecha de escaneo
	Fecha del pedido
	Ninguno

Order Box	Fecha de escaneo
	Fecha del pedido
	Fecha de entrega requerida
In Box	Ninguno
	Fecha del pedido
	Fecha de entrega requerida
Work Box	Ninguno
	Fecha de entrega requerida

¡Nota

Las opciones de agrupación y clasificación no están disponibles en la Trash Box y en Case Talk.

Ordenar

Seleccione una opción de clasificación para cambiar el orden de los casos en la lista según la opción seleccionada.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

Para cada Box, están disponibles las siguientes opciones de clasificación:

Box	Agrupar	Ordenar
Case Box	Ninguno	Nombre del paciente / Fecha de última modificación / Fecha de escaneo / Fecha del pedido / Nombre del laboratorio
	Nombre del paciente	Fecha de última modificación / Fecha de escaneo / Fecha del pedido / Nombre del laboratorio
	Fecha de escaneo	Nombre del paciente / Fecha de última modificación / Fecha del pedido / Nombre del laboratorio

	Fecha del pedido	Nombre del paciente / Fecha de última modificación / Fecha de escaneo / Nombre del laboratorio
Order Box	Ninguno	Nombre del paciente / Fecha de escaneo / Fecha del pedido / Fecha de entrega requerida / Nombre del laboratorio
	Fecha de escaneo	Nombre del paciente / Fecha del pedido / Fecha de entrega requerida / Nombre del laboratorio
	Fecha del pedido	Nombre del paciente / Fecha de escaneo / Fecha de entrega requerida / Nombre del laboratorio
	Fecha de entrega requerida	Nombre del paciente / Fecha de escaneo / Fecha del pedido / Nombre del laboratorio
In Box	Ninguno	Nombre del paciente / Fecha del pedido / Fecha de entrega requerida / Nombre de la clínica
	Fecha del pedido	Nombre del paciente / Fecha de escaneo / Fecha de entrega requerida / Nombre de la clínica
	Fecha de entrega requerida	Nombre del paciente / Fecha del pedido / Nombre de la clínica
Work Box	Ninguno	Nombre del paciente / Fecha de última modificación / Fecha de entrega requerida / Nombre de la clínica
	Fecha de entrega requerida	Nombre del paciente / Fecha de la última modificación / Nombre de la clínica

¡Nota

Las opciones de agrupación y clasificación no están disponibles en la Trash Box y en Case Talk.

Filtrado y búsqueda

Filtrar por fecha

Filtra y muestra los casos modificados por última vez dentro de la duración establecida.

1. Haga clic en el filtro de duración.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Seleccione la duración en la lista.

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- Todo: Mostrar todos los casos.
- Rango personalizado: Especifique las fechas de inicio y fin para mostrar los casos modificados por última vez dentro del periodo.
- Hoy: Muestra los casos modificados hoy por última vez.
- Ayer: Muestra casos modificados por ultima vez ayer.
- Últimos 7 días: Muestra casos modificados por última vez en los anteriores 7 días, excluyendo hoy.
- Últimos 30 días: Muestra casos modificados por última vez en los anteriores 30 días, excluyendo hoy.
- Este mes: Muestra los casos modificados por última vez durante este mes.
- Mes anterior: Muestra los casos modificados durante el último mes.

La lista de casos se actualizará en tiempo real con los casos creados o modificados por última vez dentro de la duración seleccionada.

Capacidades de búsqueda avanzada

Aproveche las funciones de búsqueda para encontrar rápidamente la información que desea.

All

▼

Search / Contains



Los siguientes criterios de búsqueda están disponibles para cada casilla:

Case Box	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, ID del paciente, Información del formulario, Nombre del laboratorio
Order Box	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, ID del paciente, Nombre del laboratorio, ID del pedido
In Box	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, Nombre de la clínica, ID del pedido
Work Box	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, Información del formulario, Nombre de la clínica, ID del pedido

Case Talk	Nombre de Case Talk (contiene), Nombre del paciente (es igual)
Trash Box (Clinic)	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, Nombre del laboratorio, Eliminado por
Trash Box (Lab)	Todos, Nombre del caso, Nombre del paciente, Nombre de la clínica, Eliminado por

Puede seleccionar los Criterios de búsqueda y seleccionar entre la lógica Contiene e Igual.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Crear/Editar/Clonar/Borrar caso

Crear casos

Crear casos en la Case Box (Clinic)

1. Haga clic en el botón "Nuevo caso" en la esquina superior derecha.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. Introduzca información básica, como el nombre del paciente y el nombre del caso.
 - Si introduce un nombre que no figura en la lista de pacientes, se añadirá un nuevo paciente.
 - Si introduce un nombre que está en la lista de pacientes, puede seleccionarlo de la lista.
 - Si está registrando un caso para un paciente existente, haga clic en el icono Lista de pacientes para seleccionar un paciente existente.



- En el cuadro de diálogo Lista de pacientes, puede registrar un nuevo paciente o editar la información de un paciente existente.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. El nombre del caso se rellenará automáticamente, pero puede cambiarlo.
4. Haga clic en "Register & Scan" para completar el registro del caso y proceder al escaneo.

- **Registrar:** Será redirigido a la página principal. Esto es útil cuando se registran varios casos.
- **Registrar & Escanear:** Desplácese a la pestaña Formulario para registrar la información del formulario para el caso.

Crear casos en la Work Box (Lab)

1. Haga clic en el botón "Nuevo caso" en la esquina superior derecha.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Ingrese o seleccione el nombre de la clínica.
3. Ingrese el nombre del paciente y el nombre del caso. El nombre del caso se rellenará automáticamente, pero puede cambiarlo.
4. Introduzca la fecha de entrega prevista teniendo en cuenta la fecha de finalización del trabajo.
5. Tras registrar el caso, se le redirigirá a la página principal.

Edición de casos

Editar casos en la Case Box (Clinic)

1. Haga clic en el icono "Editar" situado junto al nombre del caso.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Haga clic en el icono "Buscar" para cambiar el nombre del paciente. Tenga en cuenta que no se puede editar directamente; en su lugar, puede buscar un nombre de paciente con el que desee sustituir el actual y puede editar la información del paciente desde la lista.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Marque el nombre del paciente por el que desea sustituir el actual.
- Para crear un nuevo paciente, pulse el botón "Nuevo paciente".
- Utilice el botón "Editar" para modificar la información registrada sobre el paciente.
- Pulse "Aplicar" para finalizar el proceso.

Editar casos en la Work Box (Lab)

- Haga clic en el icono "Editar" situado junto al nombre del caso.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Haga clic en "Aplicar" una vez finalizada la edición.

iNota

No se puede editar la información de los casos recibidos a través del pedido en In Box.

Clonar casos

Clonar casos en la Case Box (Clinic)

- Haga clic en el icono "Clonar" de la parte superior.



- Se le preguntará qué tipo de información desea clonar en el nuevo caso.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Elija si desea replicar sólo la información del formulario o todos los datos.
- Una vez finalizada la clonación, se creará un caso denominado "[Nombre del caso] - Clonar".

Clonar casos en la Work Box (Lab)

- Haga clic en el icono "Clonar" de la parte superior.



- Duplique todos los datos para crear un nuevo caso.
- Una vez finalizada la clonación, se creará un caso denominado "[Nombre del caso] - Clonar".


Eliminar caso

Eliminar caso (Clinic y Lab)

1. Haga clic en el icono "Eliminar".



2. Haga clic en "Aceptar" para eliminar el caso.

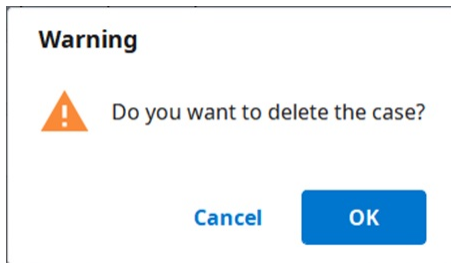

3. Los casos borrados se mueven a la Trash Box y pueden ser recuperados si es necesario.

Información del formulario

Puede introducir la información del formulario en función del programa conectado y del tipo de tratamiento.

La información que introduzca se utilizará como información básica para trabajar en programas de escaneo o CAD y realizar pedidos.

Registro de la información del formulario en la Case Box

Entrar en la pestaña Formulario

1. Seleccione si va a introducir la información del tratamiento por dientes o por arcada.
2. Tipo de selección - método - material - sombra.
 - Si ha introducido la información de forma incorrecta, puede volver a seleccionarla.
 - La información seleccionada se registra automáticamente en la lista de pedidos.
3. Haga clic en "Guardar" para guardar su registro.

Entrar en la pestaña CAD

1. Seleccione una de las siguientes opciones que definirá su estrategia de escaneo:
Dientes/Matriz múltiple flexible/Matriz múltiple.
2. Seleccione el número de diente/arco/número de matriz.
3. Defina la configuración de las opciones detalladas y las operaciones CAD.
4. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.
 - La información seleccionada se registra automáticamente en la lista de pedidos.
5. Haga clic en "Guardar" para guardar su registro

Registro de la información del formulario en la Work Box

Entrar en la pestaña Formulario

1. Seleccione el programa de escaneo que desea utilizar.
2. Seleccione una de las siguientes opciones que definirá su estrategia de escaneo:
Dientes/Matriz múltiple flexible/Matriz múltiple.
3. Los métodos pueden diferir según el programa de escaneo seleccionado.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dientes	☐	☐
Arcada	☐	☐
Matriz múltiple flexible	☒	☐
Matriz múltiple	☒	☐


4. Seleccione los dientes, arcadas o los números de matrices para el proceso de escaneo.
5. Tipo de selección - método - material - sombra.
 - Si ha introducido la información de forma incorrecta, puede volver a seleccionarla.
 - La información seleccionada se registra automáticamente en la lista.
6. Haga clic en "Guardar" para guardar su registro.

Entrar en la pestaña CAD

1. Seleccione una de las siguientes opciones que definirá su estrategia de escaneo:
Dientes/Matriz múltiple flexible/Matriz múltiple.
2. Seleccione el número de diente/arco/número de matriz.
3. Defina la configuración de las opciones detalladas y las operaciones CAD.
4. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.
 - La información seleccionada se registra automáticamente en la lista.
5. Haga clic en "Guardar".

Conexión de los dientes en el puente

Se pueden unir varios dientes en un puente cuando se aplica el mismo material a varios dientes adyacentes. Haga clic en el icono de puente situado junto a los dientes seleccionados para conectarlos o desconectarlos.

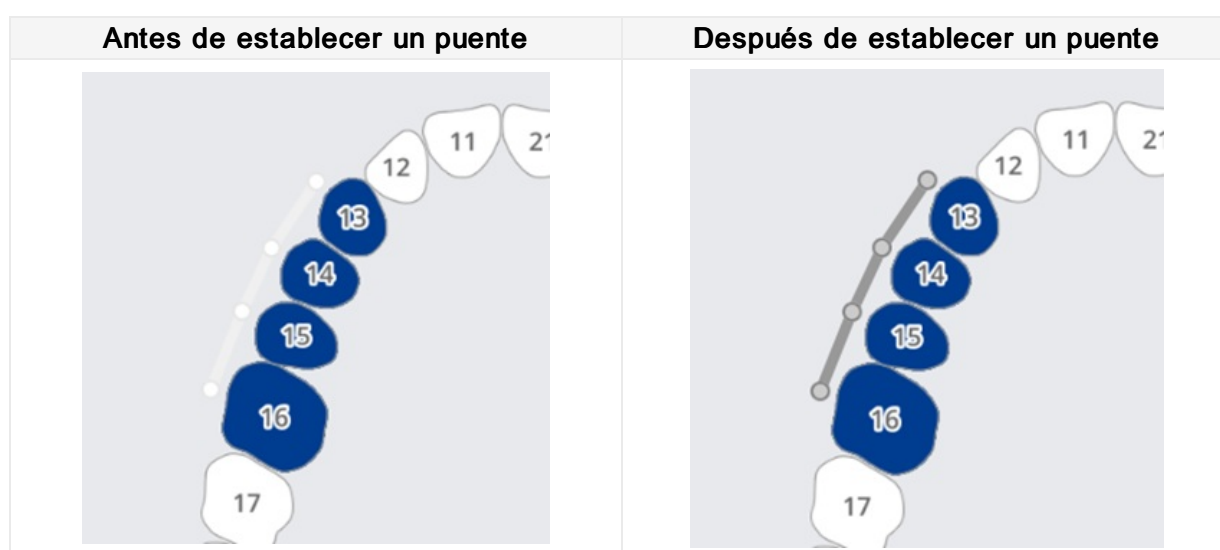

Configuración de las opciones de escaneo

Dependiendo del programa con el que se trabaje, se ofrecen varias opciones de escaneo.

Las opciones de escaneo seleccionadas se pasan a cada programa de escaneo.

Medit Scan for Labs

Opciones generales

	Dientes adyacentes	Marque los dientes preparados y adyacentes y pase esa información al programa de escaneo.
	Antagonista	Marca automáticamente el antagonista y pasa esta información al programa de escaneo.
	Articulador	Muestra las opciones para seleccionar el articulador en el programa de escaneo.
	Marcador del movimiento	Permitir el uso de la estrategia de escaneado "Movimiento de mandíbula" en el programa de escaneado.

Opciones por dientes

	Cuerpo de escaneo	Permite establecer una estrategia de escaneo de cuerpos de escaneo en el programa de escaneo.
	Escaneo de pre-operación	Permitir establecer una estrategia para escanear un modelo preoperatorio en el programa de escaneo.
	Escaneo de encerado	Permite establecer una estrategia de escaneo de encerados en el programa de escaneo.

Añadir a favoritos

Puede seleccionar rápidamente un producto registrándolo como favorito.

La lista de favoritos registrados se gestiona como una plantilla y se puede compartir mediante las funciones de exportación e importación.

Añadir a Favoritos

1. Seleccione el número de diente.
2. Tipo de selección - método - material - sombra.
 - Tipo - Método - Material - Sombras pueden registrarse como favoritos aunque no se seleccionen todos.
3. Haga clic en el icono "Estrella".

4. Una combinación de los parámetros seleccionados, excluyendo el número de diente, aparece en su lista de búsqueda de favoritos.

Gestionar plantillas favoritas

Puede registrar, gestionar y compartir diferentes tipos de plantillas.

Añadir	Añadir una nueva plantilla.
Cambiar nombre	Cambia el nombre de la plantilla actual.
Eliminar	Elimina la plantilla actual.
Exportar	Exportar la plantilla actual a un archivo.
Importar	Importar un archivo de plantilla.

Trabajo de escaneo/CAD

Proceso de escaneo

Basándose en la información introducida, se procede a al escaneo.

1. Introduzca/guarde la información del tratamiento y seleccione las opciones de escaneo necesarias.
2. Haga clic en el botón "Escanear" en la esquina superior derecha de la ventana.

Proceso CAD

Medit Link está integrado con exocad.

CAD	Registro de la información del tratamiento	Confirmación de la información sobre el tratamiento	Ejecución directa de CAD	Importación de resultados CAD a Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. En Configuración > Establecer Programa Conectado, puede vincular el programa CAD de su elección de la lista.
2. Introduce/guarde la información de la tarea y las opciones de diseño en la pestaña CAD.
3. Haga clic en "CAD" en la esquina superior derecha de la ventana.
4. El programa CAD vinculado se ejecuta y los datos se envían automáticamente.
5. Guarde los resultados después de realizar el CAD.

iNota

Medit Link para Mac no admite la función de enlace con CAD.

Obtener archivos de resultados

Exportar archivos de resultados de escaneo

Además de compartir los resultados con los socios a través de los pedidos, Medit Link le permite almacenar sus resultados en el formato de archivo deseado mediante la función de exportación.


Exportar archivos a	Especifica la ruta donde desea almacenar los resultados.
Nombre de la carpeta	El sistema crea una nueva carpeta y almacena todos los resultados en ella. El nombre predeterminado de la carpeta se establece mediante la regla de nomenclatura. Pero puede cambiar el nombre de la carpeta directamente. Puede definir la regla de nomenclatura a través de Configuración > Opciones Exportar > Reglas para el nombre de la carpeta
Nombre del archivo	Establece el nombre del archivo para el resultado. La regla de nomenclatura establece el nombre de archivo por defecto. Pero puede cambiar el nombre del archivo directamente. Puede definir la regla de nomenclatura a través de Configuración > Opciones Exportar > Reglas para el nombre de archivo
Tipo del CAD	Seleccione el programa CAD que se utilizará para su programa de diseño. Medit Link ajustará los archivos basándose en esta selección, permitiéndole proceder con el diseño sin ninguna alineación de ejes adicional.
Formato de la Mesh	Especifica el formato del archivo de la mesh final.
Formato de imagen	Especifica el formato de los archivos de imagen exportados.

Comprimir archivos	Comprime todos los resultados en un solo archivo.
Combinar mesh individuales	Combina el resultado del maxilar o la mandíbula con el diente individual. Es útil cuando no es posible importar varios archivos a un programa.
Exportar todas las relaciones oclusales	Cuando los resultados oclusales múltiples son generados desde la aplicación de escaneo, puede exportar todos los resultados oclusales a la vez.
Guardar la información del caso como PDF	Guarde la información del caso como pdf con el resultado.


Exportar archivos seleccionados

Medit Link ofrece una función de exportar desde el menú ampliado del visor de archivos. Utilícelo y podrá exportar fácilmente los archivos seleccionados.

1. Haga clic en el icono "Menú" situado junto al grupo de datos o una entidad en el árbol de datos del visor de archivos.
2. Luego haga clic en "Exportar".

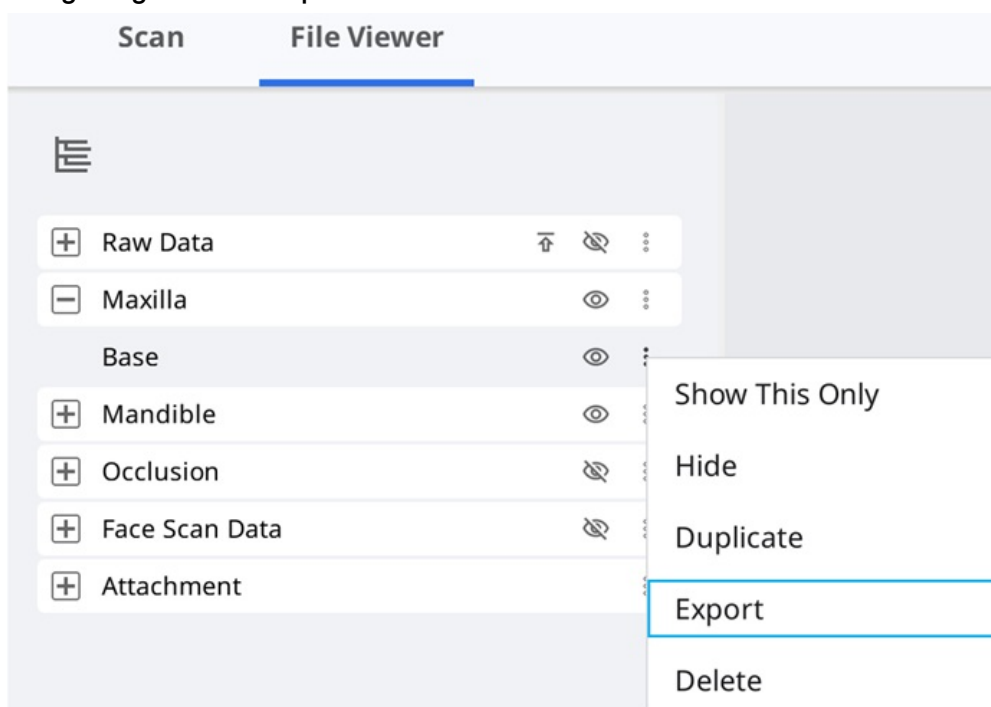

3. El cuadro de diálogo de exportación sólo muestra los archivos seleccionados que desea exportar.

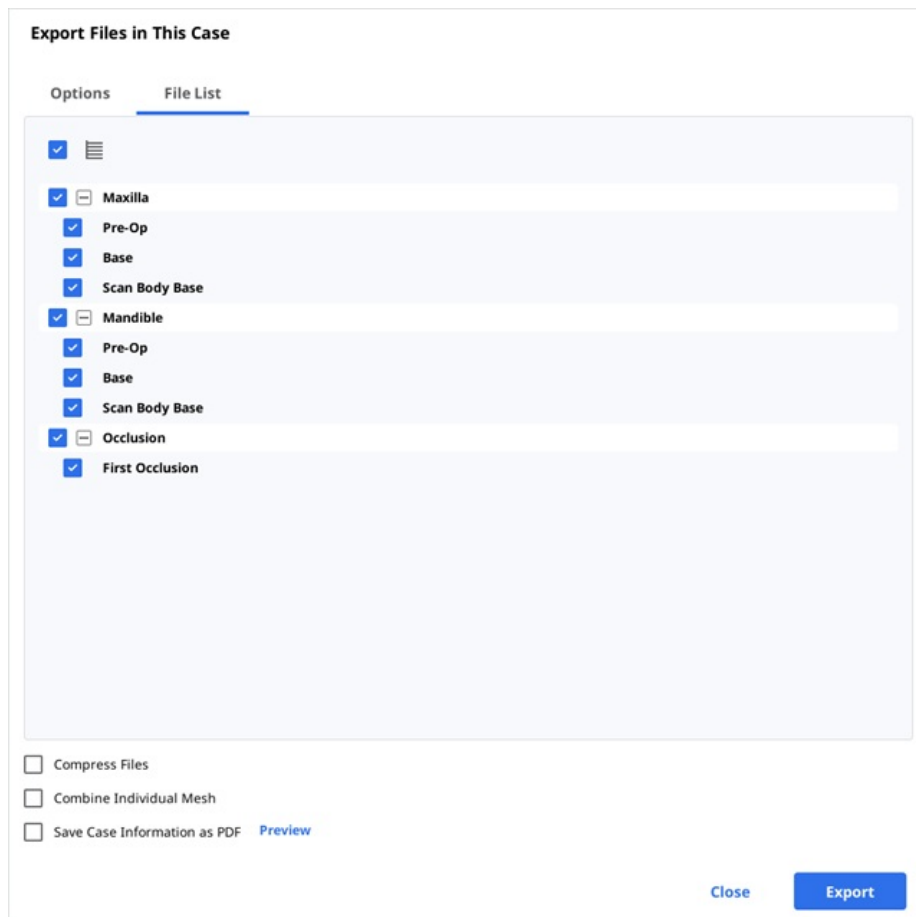

4. Finalmente, haga clic en "Exportar".

Exportar línea de margen


Medit Scan for Clinics proporciona una función para crear la línea de margen, y Medit Link puede transferir la línea de margen al programa CAD.

Exportar línea de margen como color

En general, Medit Link convierte la línea de margen en color y exporta el resultado con el maxilar o la mandíbula juntos. Puede crear la línea de margen en su cad haciendo referencia a la información de color.

Ejemplo:

Maxilar

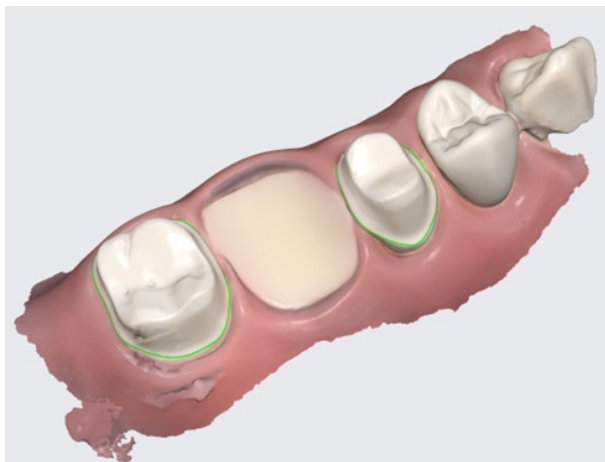

Resultado con la línea de margen como color

¡Nota

Esta función está disponible para formatos que incluyen información de color, como meditMesh, OBJ y PLY. La línea de margen no se convierte en STL.

¡Nota

El tipo de CAD > 3shape no admite esta función.


Exportar línea de margen como archivo

En el caso de Exocad, Medit Link exporta la línea de margen a "~margin.xyz", que puede importarse en exocad directamente.

Puede utilizar este archivo en exocad sin trabajo adicional.

Ejemplo:

Maxilar	Línea de margen
---------	-----------------

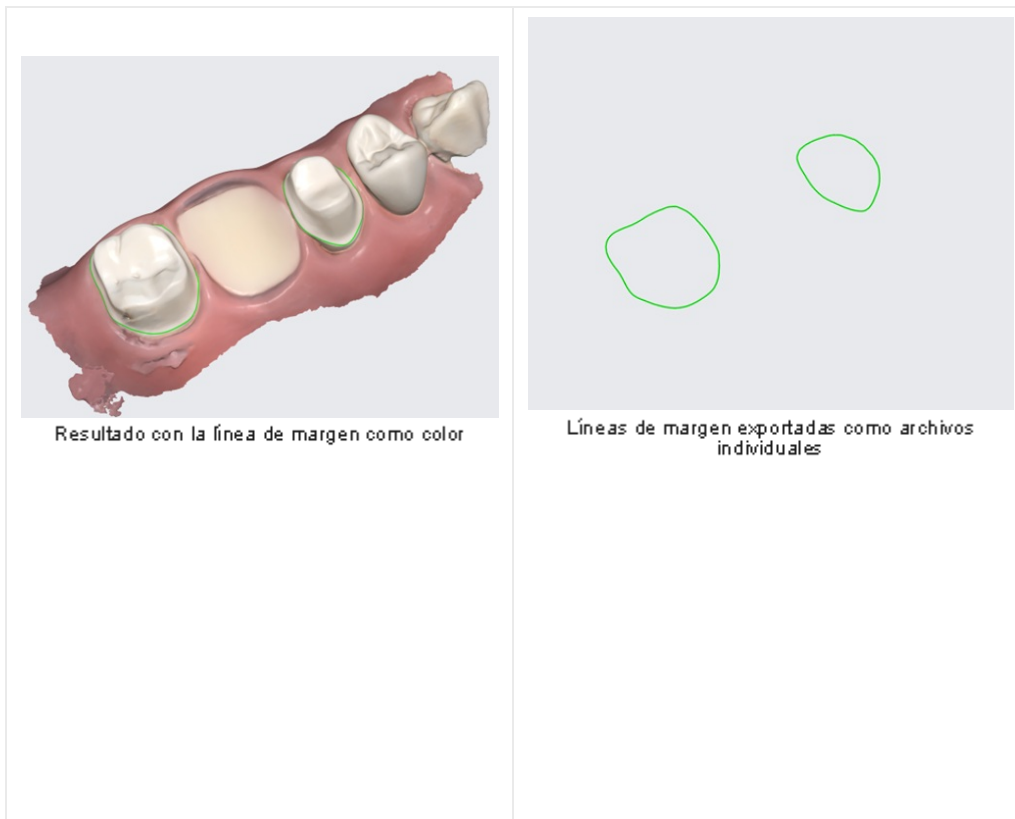

Exportar lista de casos como CSV

Medit Link proporciona la función de exportar la lista de casos en formato CSV.


Puede exportar la lista de casos con información básica y gestionar los casos fácilmente.

La función "Exportar a CSV" está disponible en el siguiente menú de la aplicación Medit Link.

- In Box
- Work Box

Cómo exportar la lista de casos

1. Vaya a In Box o Work Box.
2. Seleccione los casos que desea exportar.

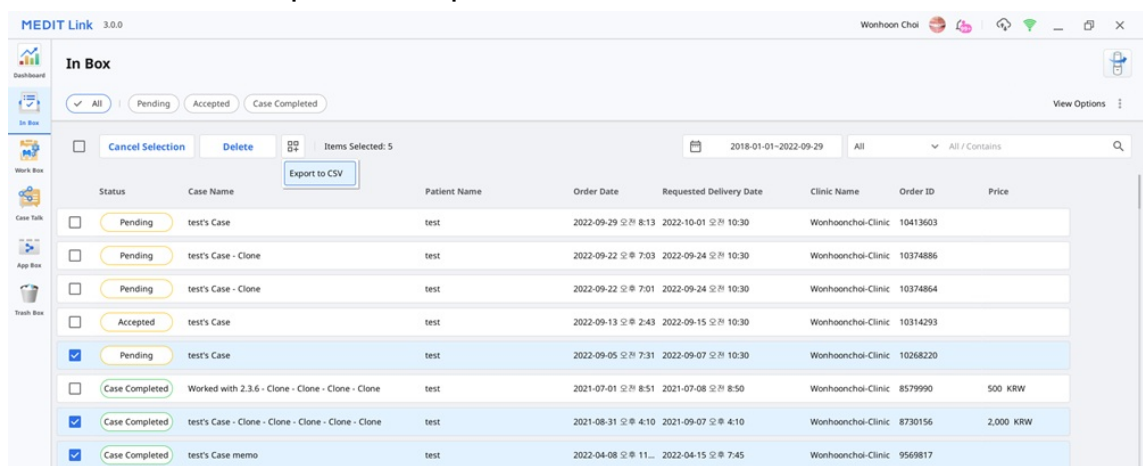

3. Haga clic en el botón "Menú ampliado" de la parte superior para seleccionar la opción "Exportar a CSV".



4. Defina la ruta y el nombre del archivo y, a continuación, guarde los resultados.

Descargar archivos de Medit Link Web

Medit Link proporciona la función de descarga.

Si desea obtener los archivos de resultados sin instalar la aplicación Medit Link, puede descargar los archivos desde el servicio web de Medit Link.

iNota


Los datos deben ser cargados en la nube de Medit para descargar los archivos desde la web.

La función de descarga está disponible en el siguiente menú del servicio web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Visualizador web

Case Box/Work Box

Encontrará el botón "Descargar" en la parte superior derecha.

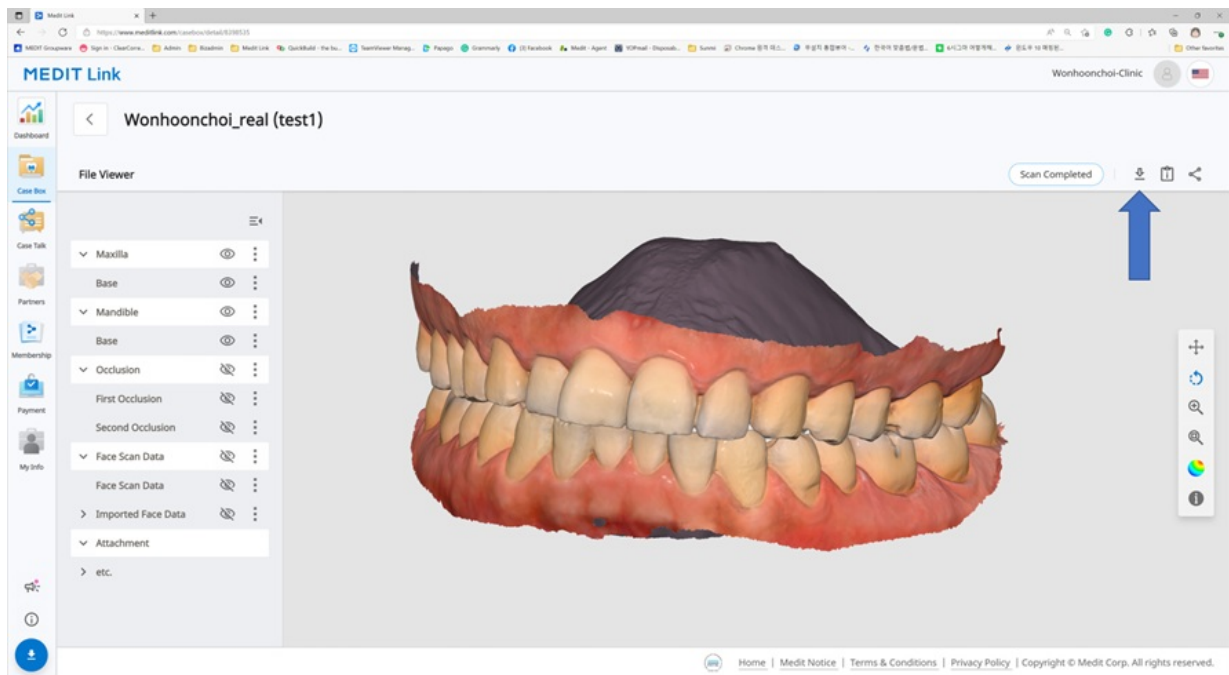

Visualizador web

Cuando comparta el caso usando Case Talk, puede establecer si permite la descarga o no.

Si marca "Conceder permiso de descarga" y comparte el caso, todos los usuarios que se conecten al enlace compartido podrán descargar los archivos.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** *Premium Feature*

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

En el visor web, encontrará el icono "Descargar" en la parte superior derecha.

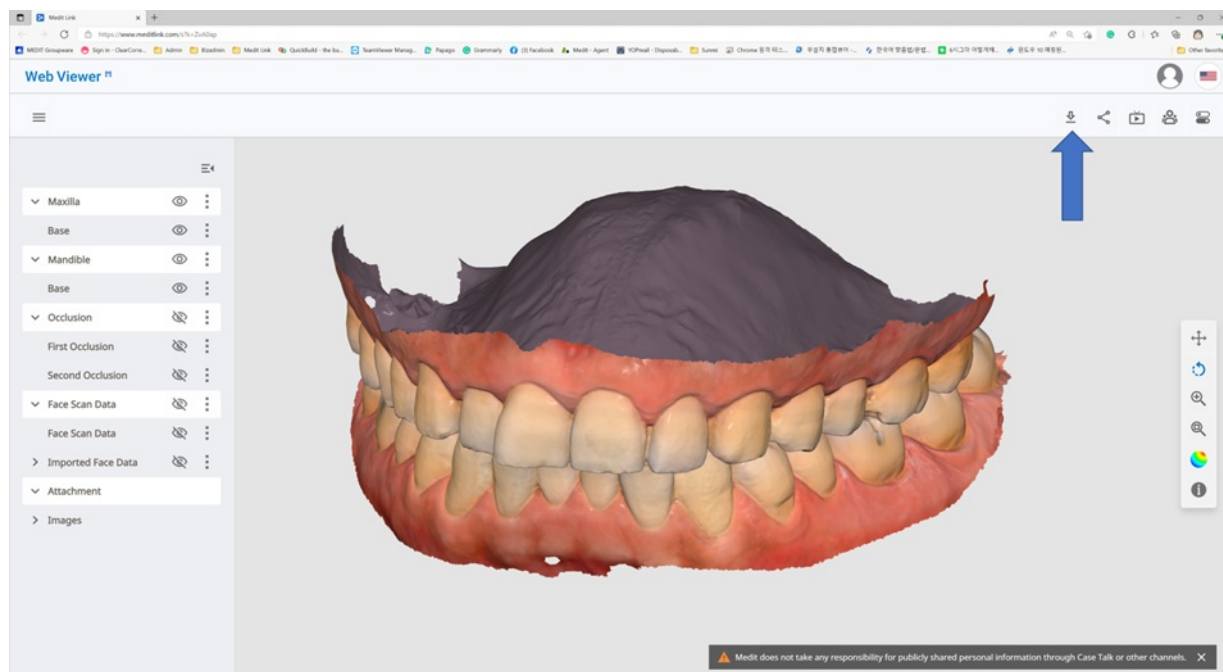

Cómo descargar

1. Haga clic en "Descargar".



2. Seleccione el formato de la mesh en el diálogo de descarga.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Luego haga clic en "Aceptar".

Pedir/Gestionar casos

Puede pedir fácilmente un caso con los datos adquiridos de los programas conectados y los datos adjuntados por el usuario.

Pedir casos

Puede hacer un pedido para sus socios en Case Box.

1. Haga clic en el botón "Pedir".
2. Compruebe la información necesaria para su pedido.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00
오후 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Selecciona un socio.
4. Compruebe la información del producto desde la pestaña de la lista de pedidos.
 - Puede decidir si desea compartir el nombre del paciente.
5. Marque los archivos que desea pedir en la pestaña Lista de archivos.
6. Introduzca la fecha de entrega deseada.
 - El valor por defecto es de 7 días después de la fecha del pedido.
7. Puede añadir una nota y etiquetas a su socio para destacar detalles específicos.
8. Cuando se generan varios resultados oclusales desde la aplicación de escaneo, puede enviar todos los resultados oclusales a la vez marcando "Pedir toda la relación oclusal".
9. Proceda con su pedido.
 - **Omitir el pago:** Proceder al pedido sin utilizar el sistema de pago proporcionado por Medit Link. Disponible al pedir de un socio con el estatus "Contractado".
 - **Pagar:** Utilice el sistema de pago proporcionado por Medit Link para proceder al pedido. Disponible cuando se pide a un socio contratado.
 - **Aceptar:** Procedemos a realizar el pedido sin condiciones en cuanto al precio del producto. Disponible cuando se hace un pedido a un socio con el estatus de "Socio".


iNota

Los siguientes servicios no están disponibles en Medit Link China.

- Saltar pago
- Pagar


Confirmar pedido (In Box)

- Aceptar el pedido al recibirlo.
- Los pedidos aceptados serán enviados a la Work Box.

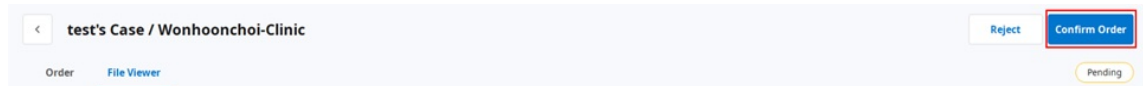


Cancelar Pedido (Order Box)

- Puede cancelar un pedido antes de que su socio lo acepte.
- Los casos cancelados pueden volver a ser pedidos.

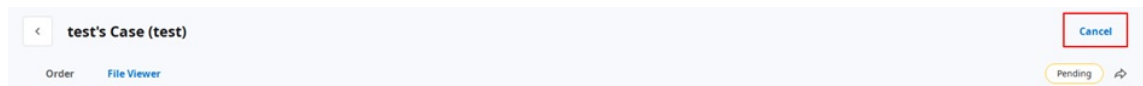


Rechazar Pedido (In Box)

- Puede rechazar un pedido recibido.
- Los casos rechazados pueden volver a ser pedidos.

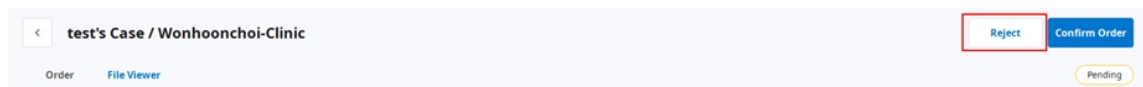

Comprobación de los casos pedidos

Puede consultar los detalles del caso que ha pedido en la Order Box de la cuenta Clinic. También puede comprobar el caso que ha recibido de la In Box en la cuenta Lab.

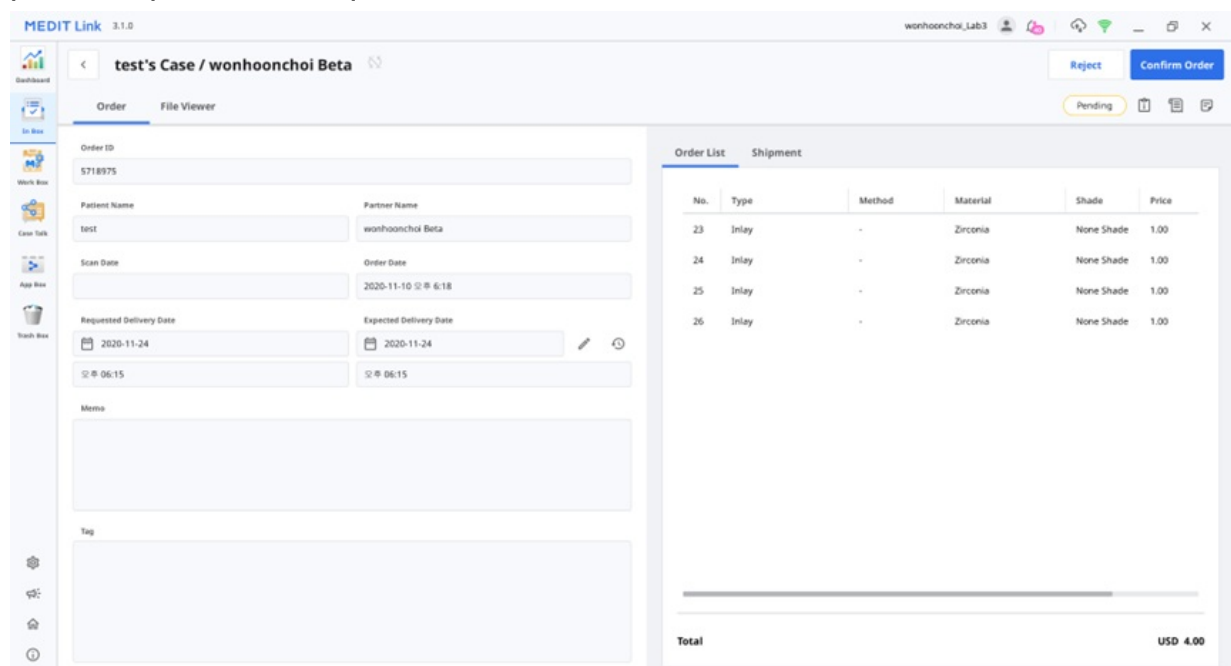

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Información del pedido	La información que puede incluirse en el pedido es la siguiente: ID de pedido/nombre del paciente/nombre de la cuenta/fecha de escaneo/fecha de pedido/fecha de entrega/fecha de vencimiento de la entrega/notas. Puede comprobar los detalles del producto solicitado y la información de entrega.
Lista de pedidos	La lista de pedidos muestra los detalles del producto solicitado.
Envío	Introduzca/compruebe la información de envío.

Introducir información sobre el envío (In Box)

Introduzca la información de envío del caso completado e inicie el envío.

1. Haga clic en la pestaña Envío.
2. Introduzca la información del envío y haga clic en "Registrar".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. La información introducida se envía a su socio.

Gestión de la fecha de entrega

Puede establecer la fecha de entrega prevista al realizar un pedido, y esta información se transmitirá a su socio.

Establecer la fecha de entrega solicitada (cuenta clinic)

- Al hacer el pedido en Case Box, puede introducir la fecha de entrega requerida.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- El valor por defecto es de 7 días después de la fecha del pedido.
- Introduzca la fecha/hora a la que desea recibir los productos y proceda con el pedido.
- Puede ajustar la hora fácilmente con el control deslizante.

Configuración de la fecha de entrega prevista (cuenta clinic)

- Puede introducir la fecha de entrega prevista para el caso pedido en la In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Compruebe la fecha de entrega solicitada con el socio y reprogramela utilizando el botón "Editar".



2. Introduzca la fecha de entrega prevista teniendo en cuenta el día laborable real. Si lo desea, también puede dejar un comentario.
3. Haga clic en "Aplicar".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

🕒 11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. La fecha de entrega prevista y la nota se enviarán junto con el pedido.
 - Puede comprobar la fecha y las notas en la Order Box.
 - Puede modificar la fecha de entrega prevista, y los cambios se transmitirán a su socio.
5. Puede consultar el historial de casos con el botón "Historial".



Completando casos

Competar (Work Box/In Box)


Una vez que se hayan realizado todas las tareas, presione "Done" para completar el caso.

Complete un caso desde el detalle del caso

Encontrará el botón "Menú" a la derecha del botón Abrir.



Complete el trabajo haciendo clic en el icono "Menú" y seleccionando "Done".

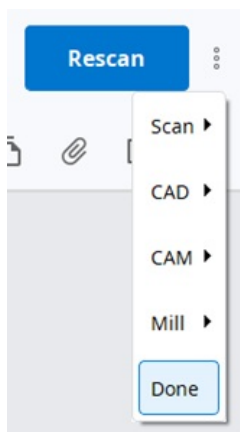


Complete los múltiples casos de la lista de casos

Al seleccionar los casos de la Work Box, el botón de menú ampliado aparece en la parte superior de la lista.



Completa los múltiples casos de la siguiente manera:

1. Vaya a Work Box.
2. Seleccione todos los casos a completar.

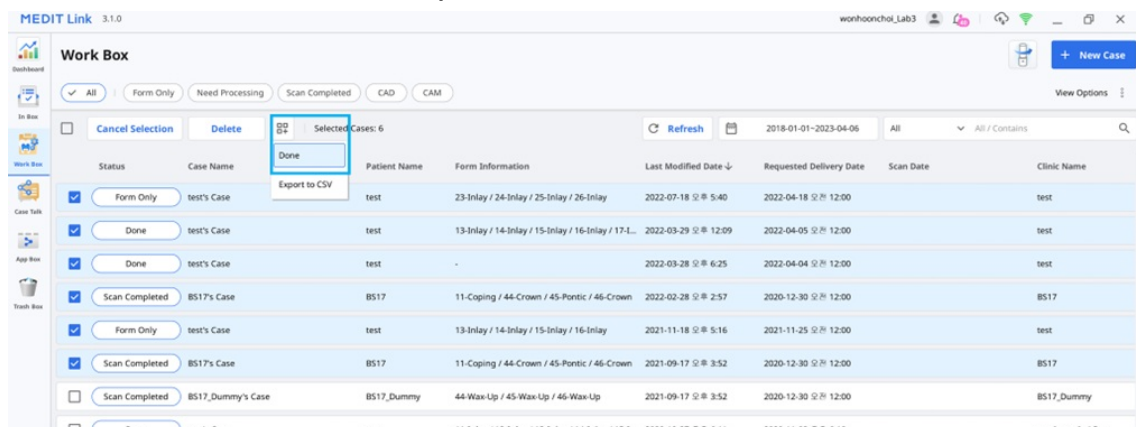

3. Haga clic en el mencionado botón "Menú ampliado".




4. Seleccione "Done" en la lista

Completar (Case Box/Order Box)

Una vez que el caso se completa desde el laboratorio, la clínica necesita confirmar el caso para completar todo el proceso de pedido.

Si el laboratorio finaliza su trabajo, la clínica puede encontrar la función "Confirmar entrega" en la Order Box.


Al hacer clic, todo el proceso de pedido se completa y el estado del caso cambiará a "Case Completed".

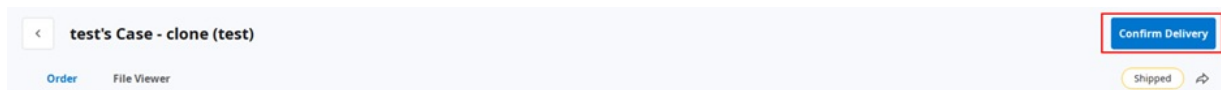

Completar un caso no pedido en la Case Box

Para los casos que no se piden al Lab, usted puede completar estos casos desde la Case Box.

1. Vaya a la Case Box.
2. Seleccione el caso que desea completar.

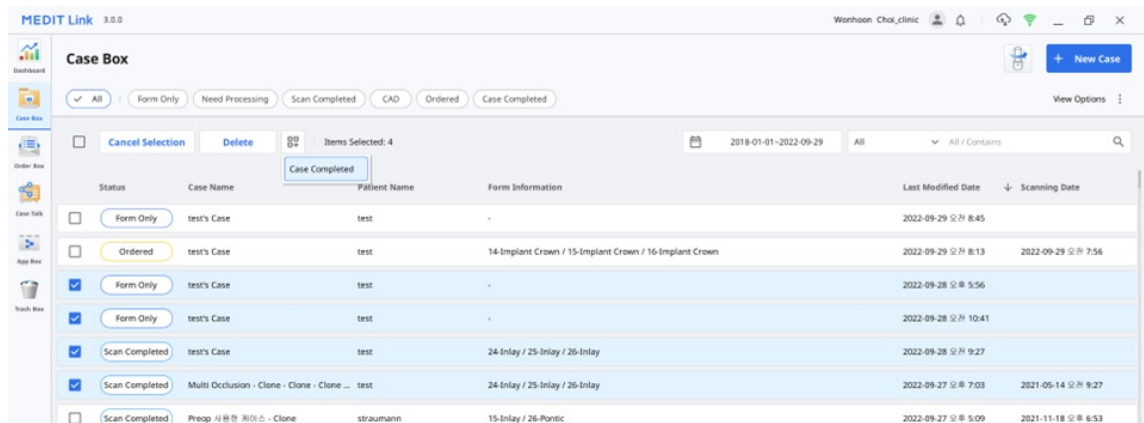

3. Haga clic en el botón "Menú ampliado".



4. Seleccione "Case Completed".

Comunicar mediante etiquetas

Puede añadir información adicional para su caso utilizando etiquetas y enviarlas a sus socios.

Añadir etiquetas al crear un nuevo caso

Puede introducir etiquetas cuando cree un nuevo caso o edite la información del caso.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Puede buscar y seleccionar fácilmente etiquetas que haya utilizado antes.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Añadir etiquetas al hacer el pedido

Puede comprobar y editar las etiquetas en el cuadro de diálogo Pedido mientras realiza el pedido.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: 오전 8:15 (AM 8:00 to PM 8:00)

Memo

Tags: Doctorname, Specialmaterial, SpecialComment

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Comprobar etiquetas en los detalles del caso

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Order Box

- Raw Data
- Maxilla
- Base
- Mandible
- Occlusion
- Dynamic Occlusion
- Attachment

Case Task

Occlusal Relationship 1

App Box

3D Model of Teeth

Trash Box

Scan Completed

Memo

Tags: Doctorname, Specialmaterial, SpecialComment

