

USER GUIDE

Medit Link

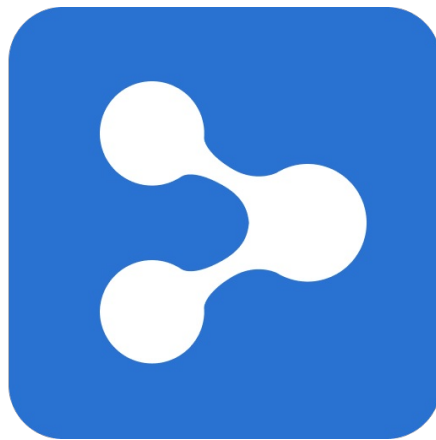


Table of Contents

Medit Link

Introdução	6
Medit Link	6
Visão geral do serviço	6
Serviço na nuvem	7
Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos	7

Medit Link > Instalação

Requisitos do sistema	9
Requisitos do sistema para Windows	9
Requisitos do sistema para macOS	9
Requisitos do sistema para serviço da Web	9
Navegadores recomendados	9
Requisitos mínimos para dispositivos móveis	9
Instalação no Windows	10
Instalação no macOS	12

Medit Link > Medit Link Web

Visão geral	16
Dashboard	17
Visão geral do Dashboard	17
Medit Insights	17
Inscrever-se no Medit Insights	18
Cancelar inscrição no Medit Insights	19
Case Box/Work Box	20
Filtragem de caso	20
Filtrar por estado	20
Filtrar por duração	20
Filtrar por pesquisa	21
Detalhes do caso	21
Order Box/In Box	23
Detalhes da encomenda	23
Guias em Order Box/In Box	23
Case Talk	24
Criação de um Case Talk	24
Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento	25
Detalhes do Case Talk	27
Web Viewer	27
Anotação	28
Comentários	29
Compartilhamento de tela em tempo real	30
Árvore de dados	30
Controles da árvore de dados	30
Controles de modelo 3D	31
Parceiros	33
Procurar parceiros	33
Minha lista de parceiros	33
Convite para parceiro	34
Assinatura	35
Assinatura	35
Meu plano	36
Armazenamento na nuvem	36

Inscrever-se	37
Cancelar inscrição	39
Informações da fatura	40
Como adicionar um método de pagamento	41
Como alterar um método de pagamento	43
Resgatar	44
Registrar código de resgate	44
Ativar código de resgate	45
Pagamento	47
Detalhes de pagamento (contas de clínicas e laboratórios)	47
Informações sobre a conta de pagamento (apenas conta de laboratório)	47
Minhas informações	48
Minha conta	48
Minha organização (apenas conta de Administrador)	48
Meu scanner	49
Minha lista de preços (apenas conta de Administrador de laboratório)	49
Menu Outros	50
Aviso e atualização	50
Informações da Medit	50
Download do aplicativo Medit Link	50

Medit Link > Aplicativo Medit Link

Visão geral	52
Visão geral de caixa	52
Barra de título	54
Minhas informações	54
Notificações	54
Gerenciador da sincronização de casos	55
Upload	56
Download	56
Estado da rede	57
Menu	58
Dashborad	58
Case Box/Work Box	58
Guias em Case Box/Work Box	59
Funções em Case Box/Work Box	59
Order Box/In Box	60
Guias em Order Box/In Box	61
Case Talk	61
App Box	62
Trash Box	62
Configurações	63
Gerenciamento do paciente	63
Adicionar novo paciente	63
Excluir paciente	64
Mesclar pacientes	64
Aviso e atualização	65
Ir ao Medit Link Web	65
Informações da Medit	65
Configurações	67
Geral	67
Gerenciamento do armazenamento	68
Definir período	68
Armazenamento local	68
Armazenamento na nuvem	69
Definir o programa conectado	69

Opções de exportação	70
Ferramenta de conversão de casos	71
Como usar a Ferramenta de conversão de casos	71
Opções de proxy	73
Sobre	73
Guia do usuário	74
Visualizador de arquivos	75
Árvore de dados	75
Ferramentas de controle de modelo	75
Controle de modelo 3D	75
Controle de imagem 2D	76
Ferramentas de função	77
Captura de imagens e nota	77
Captura de ortodontia	77
Preencher buracos	78
Recorte	78
Otimizar alinhamento da oclusão	81
Movimento mandibular	82
Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos	83
Como gerenciar vários resultados	83
Visualizar opções	85
Filtros do estado	85
Itens da tabela	86
Tipo de visualização	87
Visualização em galeria	88
Visualização em lista	89
Agrupamento	89
Ordenação	90
Filtragem e pesquisa	92
Filtrar por data	92
Recursos avançados de pesquisa	92

Medit Link > Fluxo de trabalho

Criar/Editar/Clonar/Excluir caso	94
Criar casos	94
Criar casos na Case Box (Clínica)	94
Criar casos na Work Box (Laboratório)	95
Editar casos	95
Editar casos na Case Box (Clínica)	95
Editar casos na Work Box (Laboratório)	96
Clonar casos	97
Clonar caso na Case Box (Clínica)	97
Clonar caso na Work Box (Laboratório)	97
Excluir caso	97
Excluir caso (Clínica e Laboratório)	98
Informações do formulário	99
Registrar informações do formulário na Case Box	99
Inserir na guia Formulário	99
Inserir na guia CAD	99
Registrar informações do formulário na Work Box	99
Inserir na guia Formulário	99
Inserir na guia CAD	100
Conectar dentes à ponte	100
Definição das opções de escaneamento	100
Opções gerais	100
Opções por dente	101

Adicionar aos favoritos	101
Adicionar aos favoritos	101
Gerenciar templates favoritos	101
Trabalhar em escaneamento/CAD	103
Processo de escaneamento	103
Processo de CAD	103
Obter arquivos de resultados	104
Exportar arquivos de resultados de escaneamento	104
Exportar arquivos selecionados	105
Exportar a linha de margem	106
Exportar a linha de margem como uma cor	106
Exportar a linha de margem como um arquivo	107
Exportar a lista de casos como CSV	108
Como exportar a lista de casos	108
Download de arquivos do Medit Link Web	109
Case Box/Work Box	109
Web Viewer	109
Como fazer o download	110
Pedir/gerenciar pedidos	112
Você pode fazer facilmente o pedido de um caso com dados adquiridos de programas conectados e com os dados anexados pelo usuário.	112
Pedidos de casos	112
Confirmar pedido (In Box)	113
Cancelar pedido (Order Box)	113
Rejeitar pedido (In Box)	113
Verificação de casos pedidos	113
Inserir informações de envio (In Box)	114
Gerenciamento da data de entrega	115
Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica)	115
Concluir casos	116
Concluir (Work Box/In Box)	116
Concluir um caso nos detalhes dele	116
Concluir vários casos na lista de casos	117
Concluir (Case Box/Order Box)	117
Concluir um caso sem pedido na Case Box	117
Comunicar usando etiquetas	119
Adicionar etiquetas ao criar um caso	119
Adicionar etiquetas ao fazer pedido	120
Verificar etiquetas em detalhes do caso	120

Introdução

Medit Link

O Medit Link é uma ferramenta de colaboração projetada para facilitar a comunicação entre clínicas e laboratórios e fornecer um fluxo de trabalho otimizado para cada parte envolvida.

Ele oferece funcionalidades diferenciadas com base no tipo e nas permissões de cada conta. O programa fornece uma interface de usuário amigável para gerenciar o fluxo de trabalho, desde o escaneamento com scanners orais e de modelos, pedidos de casos e design e produção de próteses.

O Medit Link é composto por um serviço da web e um aplicativo de computador.

Visão geral do serviço

		Web	Aplicativo
		• Registrar e gerenciar a conta • Pesquisar • Pesquisar e gerenciar parceiros • Compartilhar casos via Web Viewer com um link compartilhável • Acessar casos criados no aplicativo • Gerenciar pedidos	• Inserir informações do formulário • Escanear • Fazer/receber pedidos e fazer pagamentos • Vincular ao CAD • Gerenciar pacientes
Clínica	Administrador	Pesquisar e gerenciar parceiros e sua organização, gerenciar informações de pagamento e compartilhar casos. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Parceiros - Assinatura - Pagamento - Minhas informações	Inserir informações do formulário, escanear, vincular com CAD, fazer pedidos, fazer pagamentos e gerenciar pacientes. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Gerenciamento do paciente
	Membro	- Case Box - Case Talk - Minhas informações	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Laboratório	Administrador	Pesquisar e gerenciar parceiros e sua organização, gerenciar informações de pagamento e compartilhar casos. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Parceiros - Assinatura - Pagamento - Minhas informações	Inserir informações de formulário, escanear, vincular com CAD e receber/gerenciar pedidos. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Membro	- Work Box - Case Talk - Minhas informações	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

ⓘAviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Pagamento

Serviço na nuvem

O Medit Link oferece suporte ao upload/download automático de bancos de dados e arquivos do AWS (Amazon Web Services).

Os dados armazenados na nuvem são sincronizados automaticamente com os computadores de vários usuários na organização para que eles possam acessar os mesmos dados de qualquer computador a qualquer momento. O backup e a recuperação baseados em nuvem mantêm todos os seus dados seguros. Isso mantém seus dados seguros mesmo em caso de perda de dados devido a falha repentina do computador.

O serviço na nuvem permite que dentistas e laboratórios parceiros compartilhem dados rapidamente sem o incômodo de enviar os escaneamento por e-mail ou transferi-los manualmente. Todos os dados, incluindo informações do paciente, são criptografados, armazenados e transmitidos com segurança. A Medit está em conformidade com as leis e os regulamentos médicos, como HIPAA e GDPR.

Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos

O Medit Link oferece seu próprio sistema de pedidos e pagamentos.

- O Medit Link permite criar contratos entre dentistas e laboratórios dentários e compartilhar dados de forma rápida e fácil.
- Você pode verificar e gerenciar o status do pedido.

O sistema de cartão de crédito funciona com módulos de pagamento de plataformas de pagamento online, como Stripe (www.stripe.com) e I'mPort (<http://www.iampor.kr>), tornando os serviços de pagamento fáceis e convenientes.

ⓘAviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Pagamento

Requisitos do sistema

ⓘ Aviso

Consulte os requisitos do sistema do Medit Scan for Clinics e do Medit Scan for Labs se quiser usar o software de escaneamento com seu scanner.

Requisitos do sistema para Windows

	Laptop e computador
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz ou superior
RAM	16 GB ou superior
Placa de vídeo	NVIDIA GeForce GT 760 (2 GB) ou superior/ou placa de vídeo equivalente da AMD
SO	Windows 8 de 64 bits (não disponível em 32 bits) ou superior

Requisitos do sistema para macOS

	Mac
Processador	M1 com 8 núcleos, GPU de 7 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos
RAM	16 GB ou superior
SO	Monterey 12

Requisitos do sistema para serviço da Web

Navegadores recomendados

	Navegadores
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Requisitos mínimos para dispositivos móveis

Tipo	Android	iOS
Dispositivo	Equivalente a Galaxy S7 ou superior	Equivalente a iPhone 7 ou superior
SO	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB ou superior	2 GB ou superior
AP	Superior ao Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalação no Windows

O Medit Link é instalado como um pacote com programas de aquisição de escaneamento: o Medit Scan for Clinics e o Medit Scan for Labs.


1. Execute o programa Medit_LinkSetup.exe.
2. Selecione um idioma para instalação.
3. Selecione a pasta para a instalação do Medit Link. Leia e concorde com os termos e condições da licença e clique em "INSTALAR".

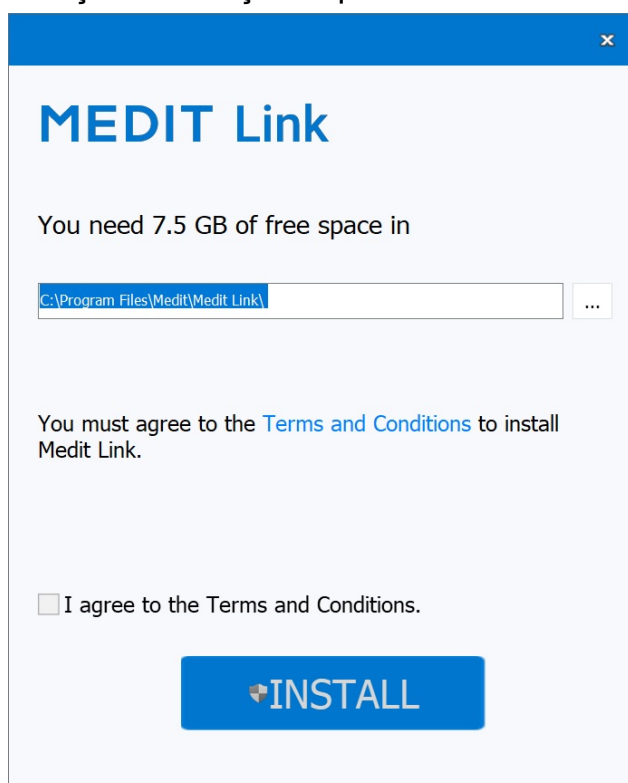

4. Certifique-se que o cabo do scanner esteja desconectado do computador antes de ir para a próxima etapa. A instalação não poderá prosseguir se o scanner estiver conectado ao seu PC.
5. O programa será instalado automaticamente, o que pode demorar alguns minutos. Não desligue ou tire da tomada o seu computador até a instalação estar concluída.

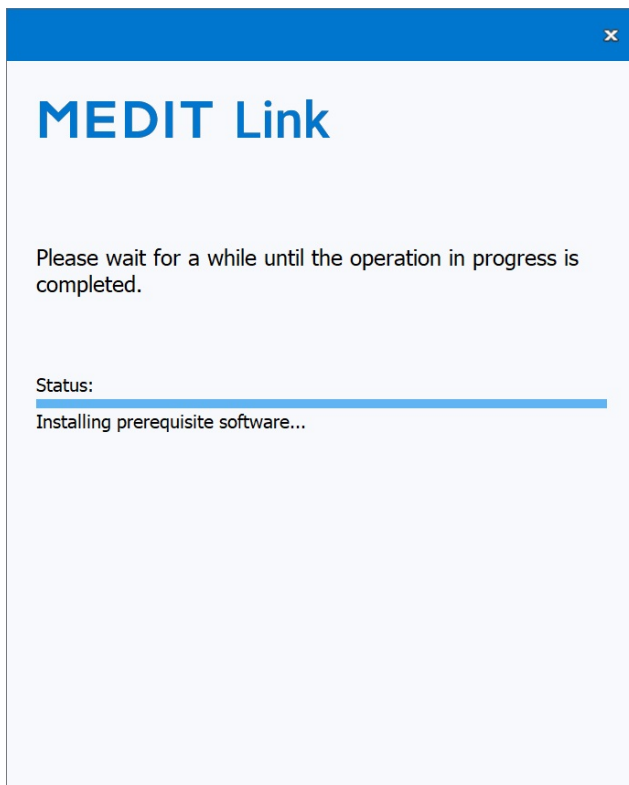

6. Reinicie o seu computador após a instalação ser concluída. Você pode continuar sem reiniciar o computador se não tiver o scanner.

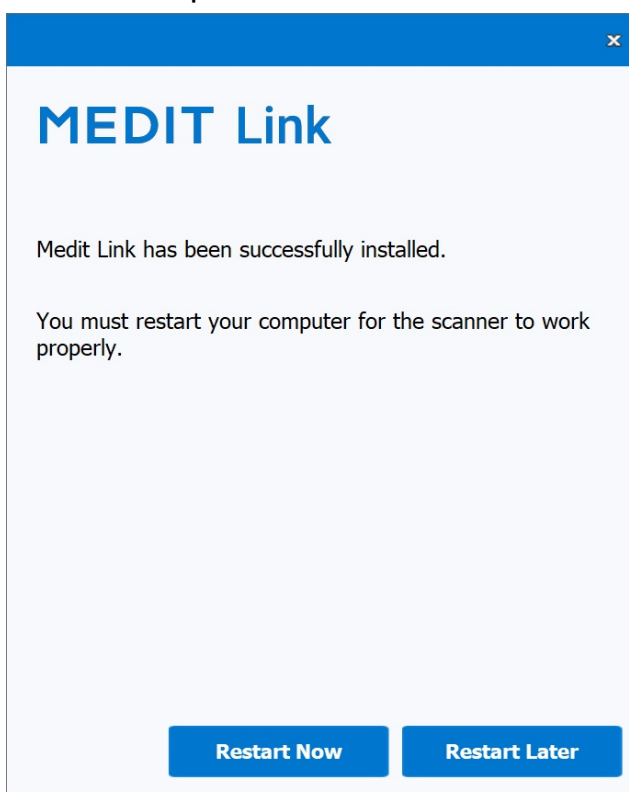


ⓘAviso

Se você não reiniciar seu computador após a conclusão da instalação, o scanner talvez não funcione corretamente.


Instalação no macOS

O Medit Link é instalado como um pacote com o Medit Scan for Clinics.


1. Execute o programa Medit_Link_x.x.x.pkg e clique em "Continuar".

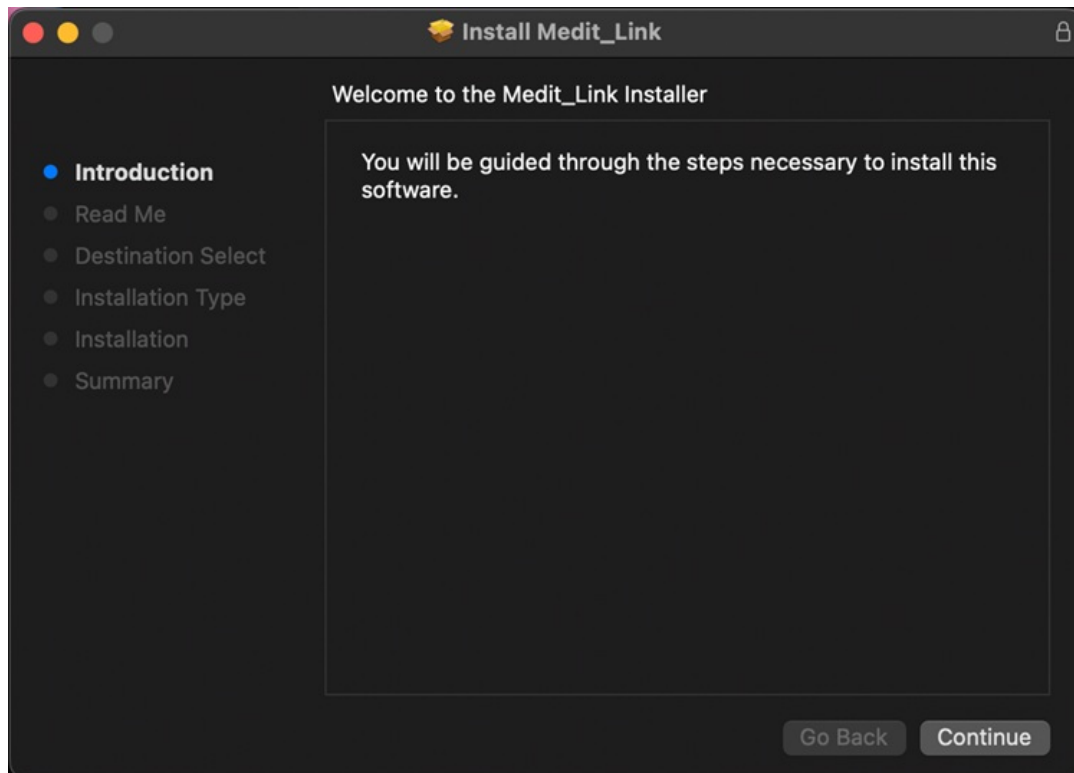


2. Leia o Contrato de licença de usuário final e clique em "Continuar".

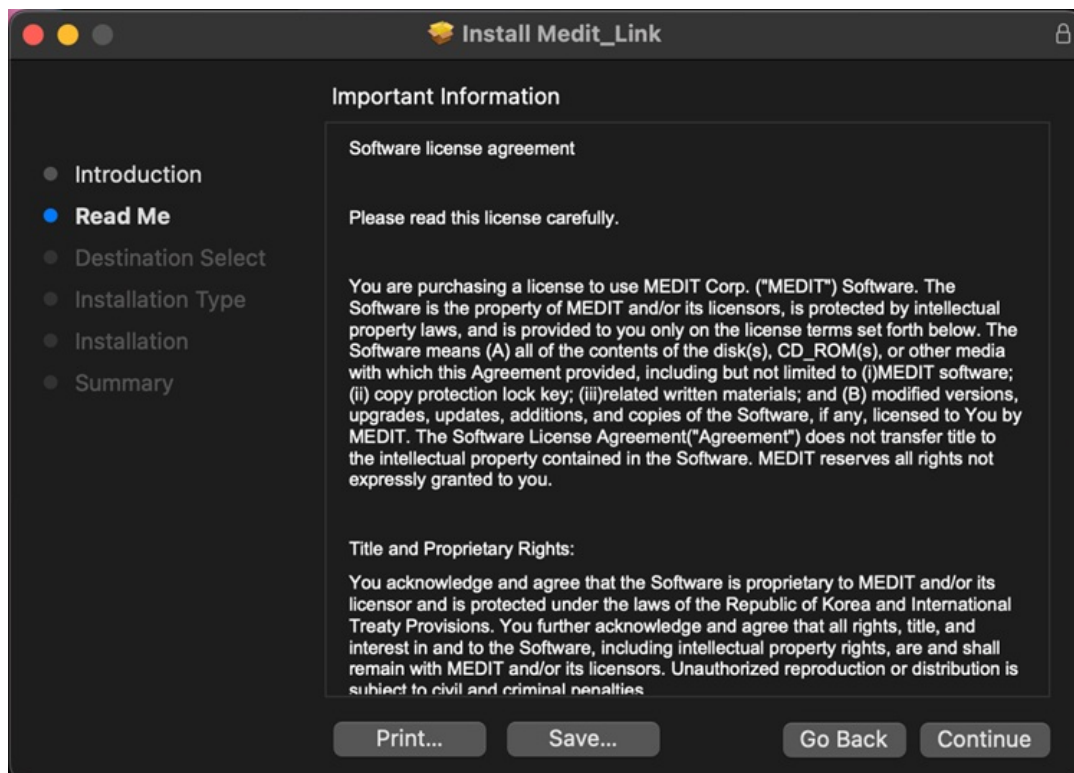

3. Selecione o disco para instalar e clique em "Continuar".

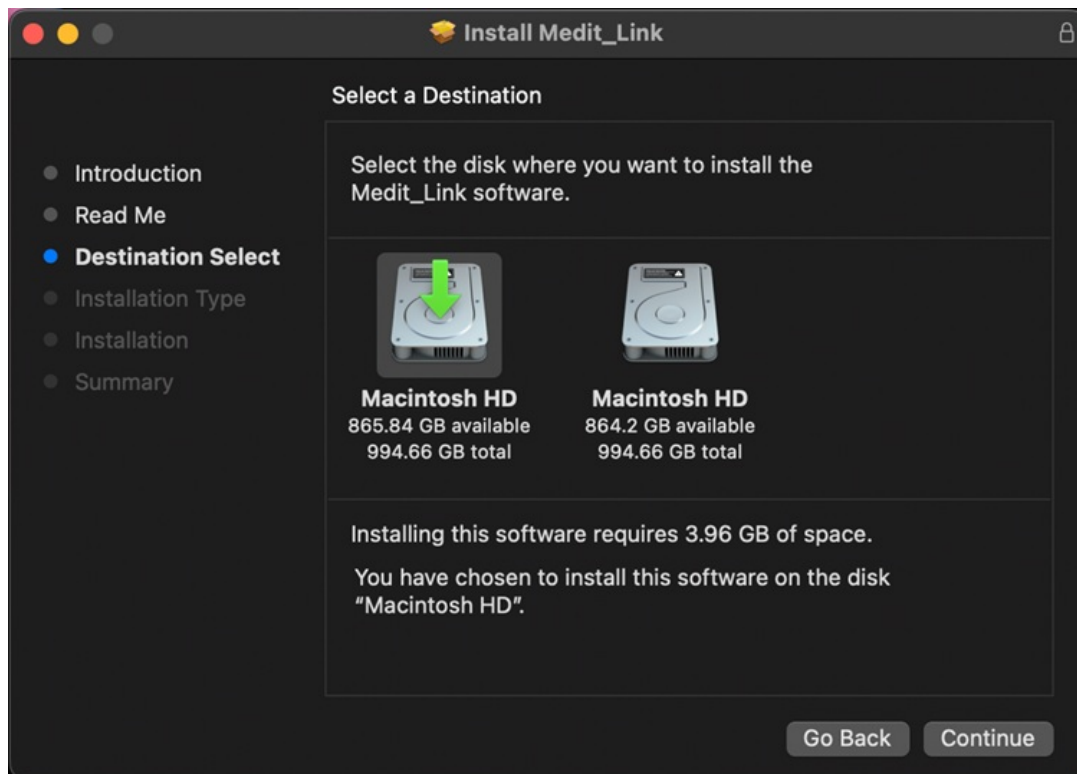


4. Clique no botão "Alterar local de instalação..." para alterar o destino da instalação.

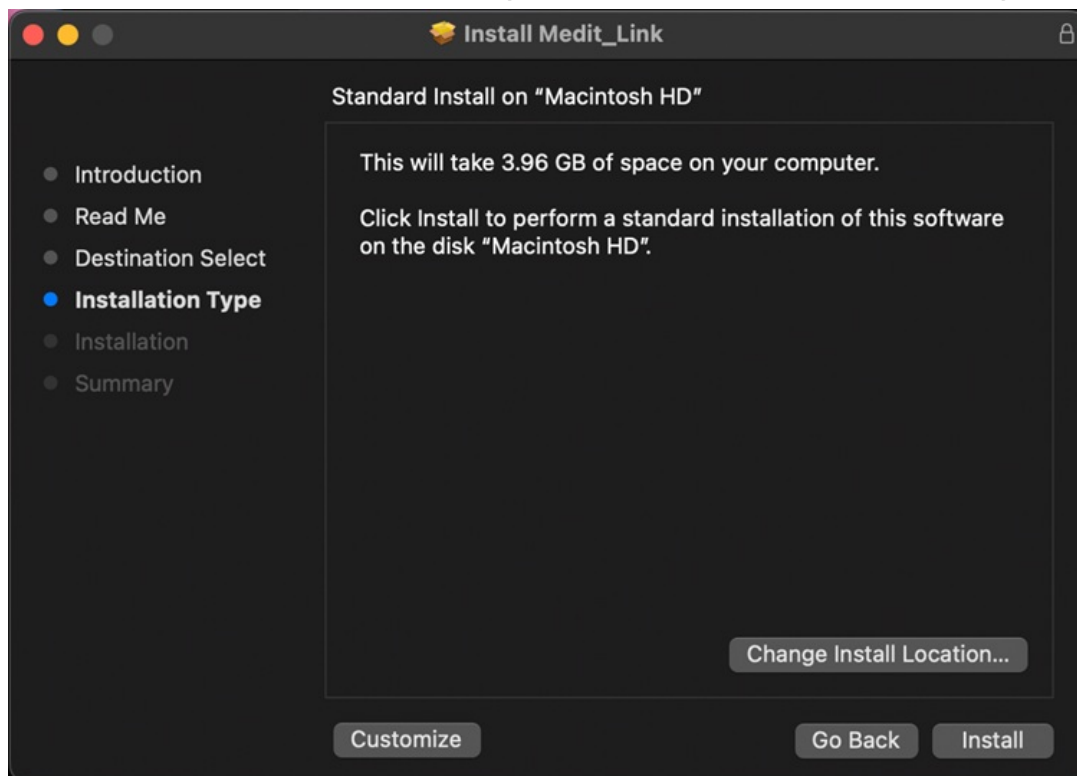


5. Clique em "Instalar" e digite sua senha do Mac para permitir a instalação, se solicitado.



6. Aguarde a instalação ser concluída.

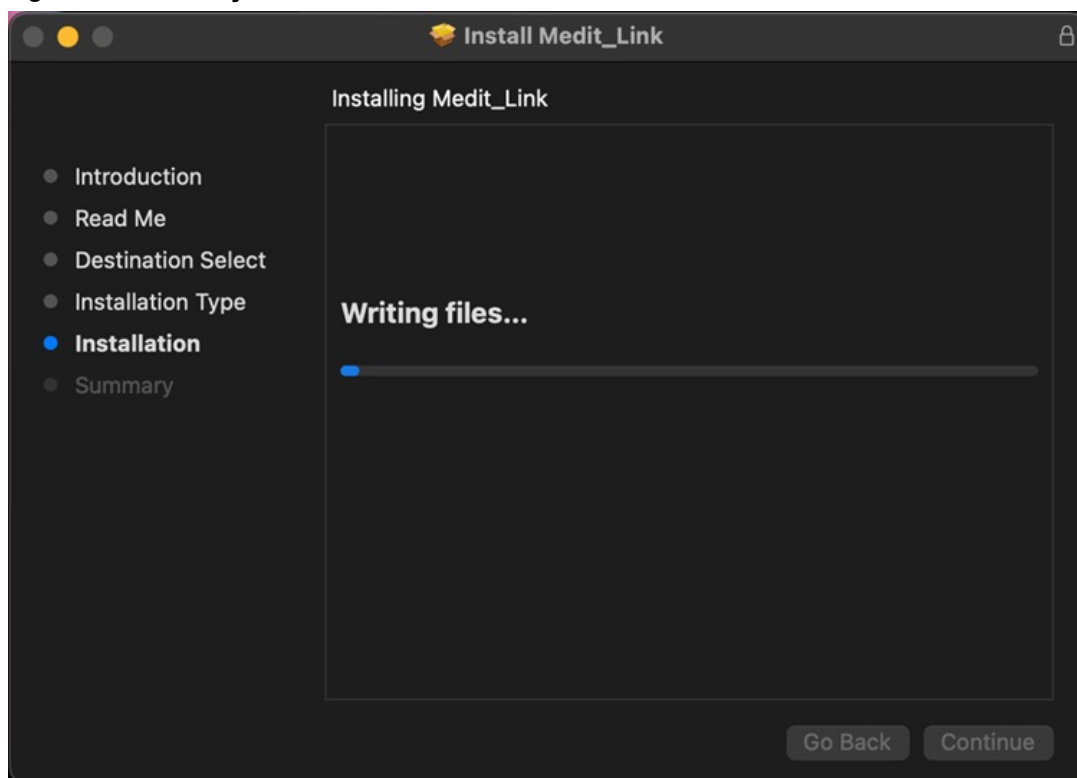

7. Clique em "Fechar" para sair da janela de instalação.

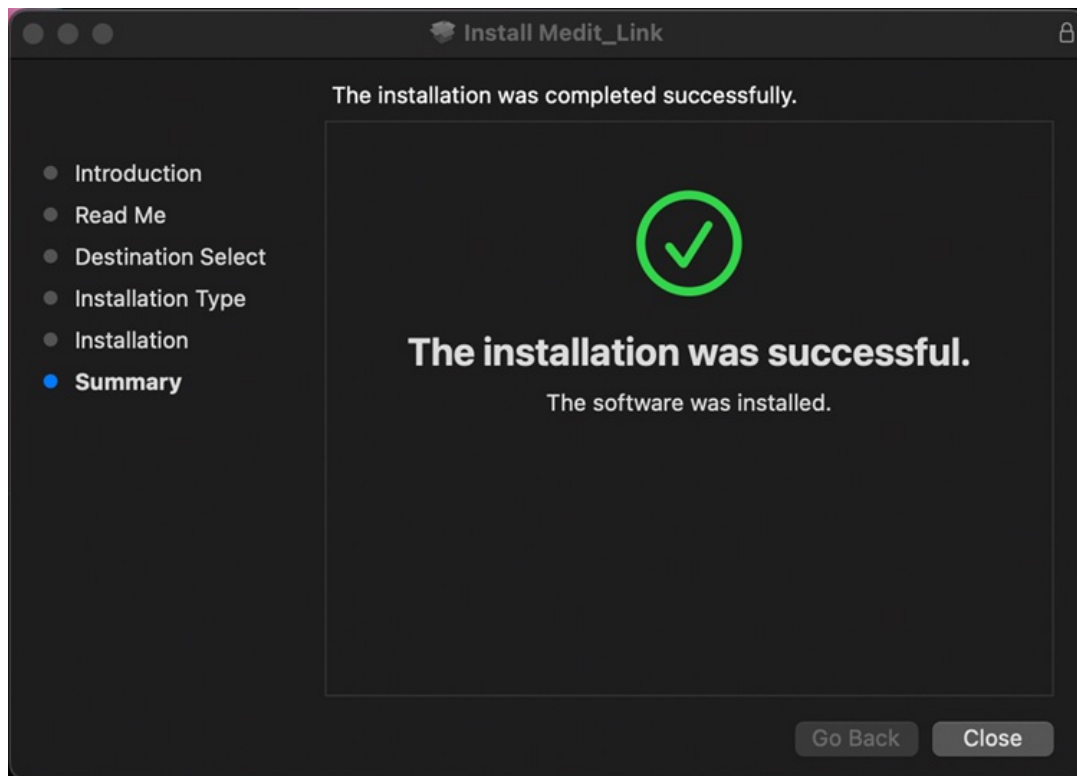

Visão geral

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

MEDIT Link

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name

Case Name / Contains

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

Total Cases : 18

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone - ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share


1

2

Dashboard

Visão geral do Dashboard

É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

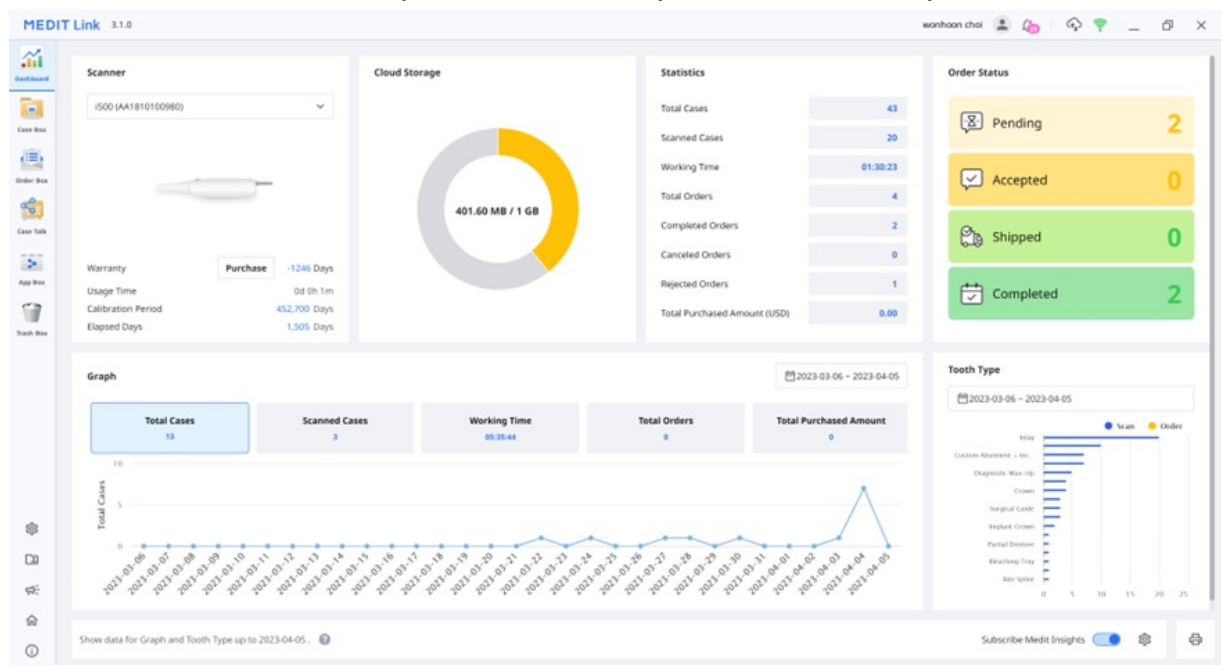

Gráficos e tabelas no dashboard mostram estatísticas de todo o trabalho feito no Medit Link.

Scanner	Fornece informações sobre os scanners ativos, incluindo garantia, tempo de uso do scanner, intervalo de calibração e tempo decorrido de calibração.
Armazenamento na nuvem	Exiba a capacidade total da nuvem e a quantidade em uso.
Estatísticas	Fornece estatísticas sobre casos com base no estado do trabalho.
Estado do pedido	Fornece estatísticas sobre casos com base no estado do pedido.
Gráfico	Informações de trabalhos em gráfico por período.
Tipo de dente	Fornece estatísticas sobre o número de escaneamentos e pedidos por informação de tratamento.


Medit Insights

O Medit Insights é um serviço de geração de relatórios que ajuda a analisar suas estatísticas de uso.

Aviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Medit Insights

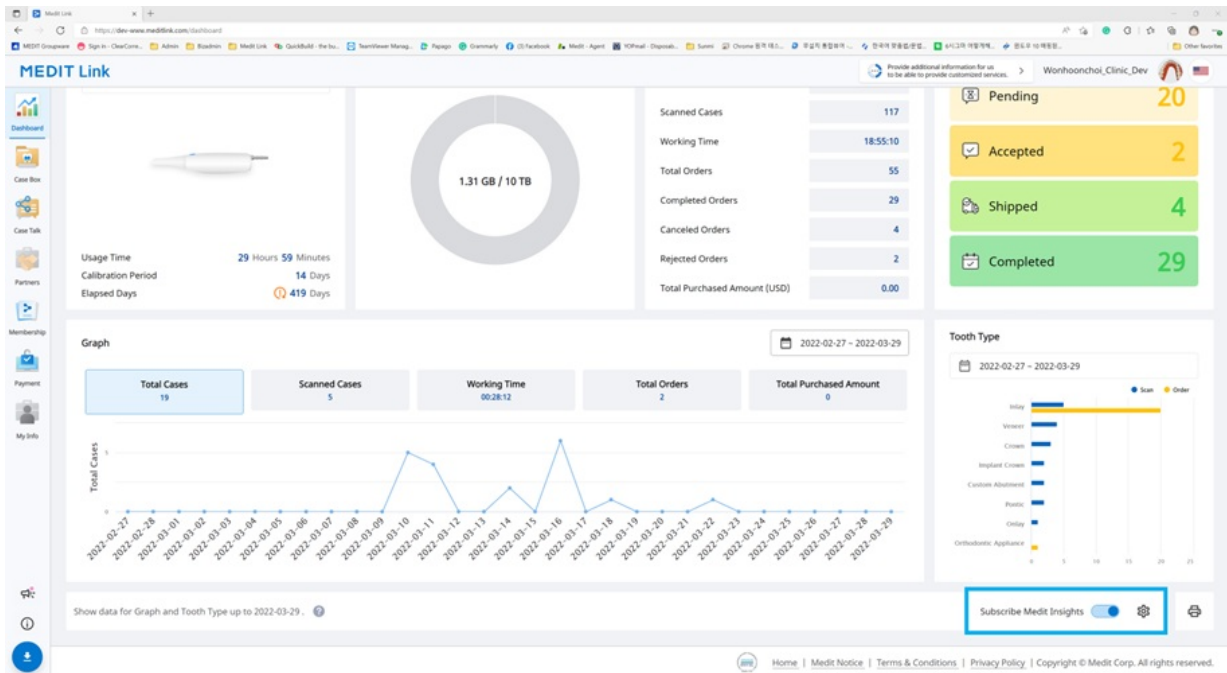

Inscrever-se no Medit Insights

Você pode receber um e-mail de relatório no segundo dia de cada mês. Não é necessário nenhum processo de inscrição adicional. Basta ativar "Inscrever-se no Medit Insights".

Se você não usar o endereço de e-mail usado para a conta do Medit Link, poderá definir outro endereço de e-mail para receber o Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

No segundo dia de cada mês, você receberá um e-mail com as estatísticas mostradas abaixo.

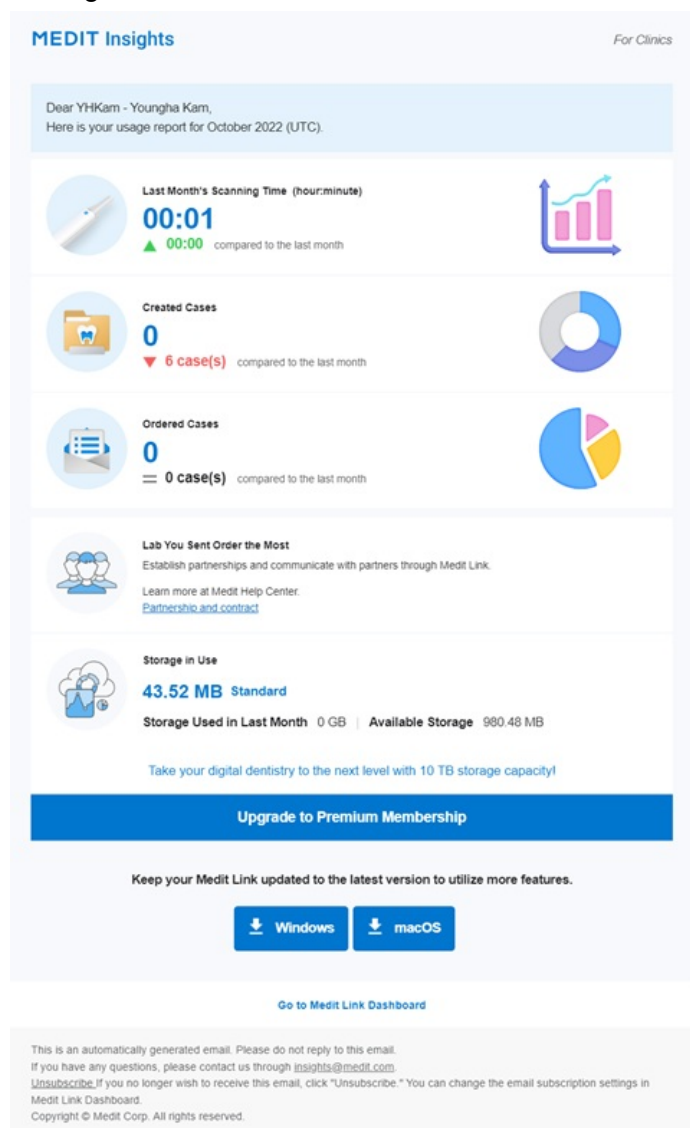


Banner	A Medit fornece dicas e informações úteis aqui. * Se você não quiser ver o banner, desmarque a caixa de seleção Contrato de marketing e promoção em Minhas informações > Minha conta.
Informações estatísticas	As informações de estatísticas são exibidas, como tempo de escaneamento, caso criado, laboratório com mais pedidos, etc.
Download do Medit Link	O botão fornece o link de download do Medit Link.
Dashboard	Todas as informações estatísticas se baseiam nas informações do seu Dashboard. É possível ver mais detalhes no Dashboard.

Cancelar inscrição no Medit Insights

Desative "Inscrever-se no Medit Insights" no Dashboard ou clique em "Cancelar inscrição" no e-mail recebido.

Case Box/Work Box


O Case Box (Clinic) ou Work Box (Lab) mostra todos os casos que o usuário criou no aplicativo Medit Link. Você pode ver os arquivos por meio de um navegador da Web sem instalar um programa separado.

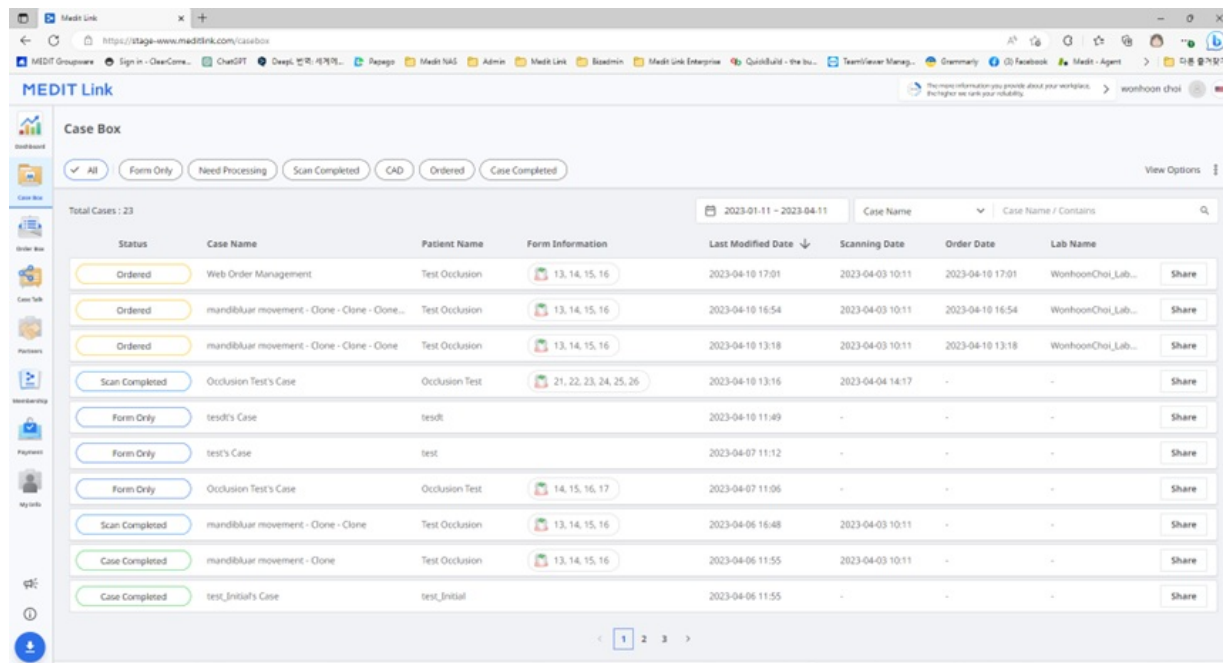

Filtragem de caso

Filtrar por estado

É possível filtrar casos com base no seu estado.

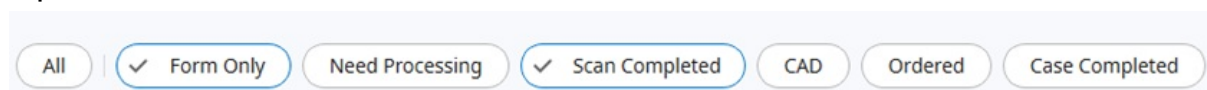

- O usuário pode clicar no estado que deseja visualizar. O navegador exibirá apenas casos no estado escolhido.
- O usuário pode selecionar vários estados de uma só vez.

O seguinte tipo de estado é fornecido com base no tipo de conta:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Lab)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Filtrar por duração

Você pode filtrar e exibir casos que foram modificados pela última vez no período definido.

1. Clique no filtro de duração.



2. Selecione o intervalo.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados dentro desse período.
- Hoje: Exibe casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez com a data de ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Últimos 90 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 90 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe casos deste mês.
- Mês anterior: Exibe casos do mês anterior.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

Filtrar por pesquisa

Você pode aproveitar os recursos de pesquisa para pesquisar as informações necessárias com facilidade e rapidez.


Case Name

Case Name / Contains

Opções de pesquisa com base na conta da clínica/laboratório:

Case Box (Clinic)	Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório
Work Box (Lab)	Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido

Detalhes do caso

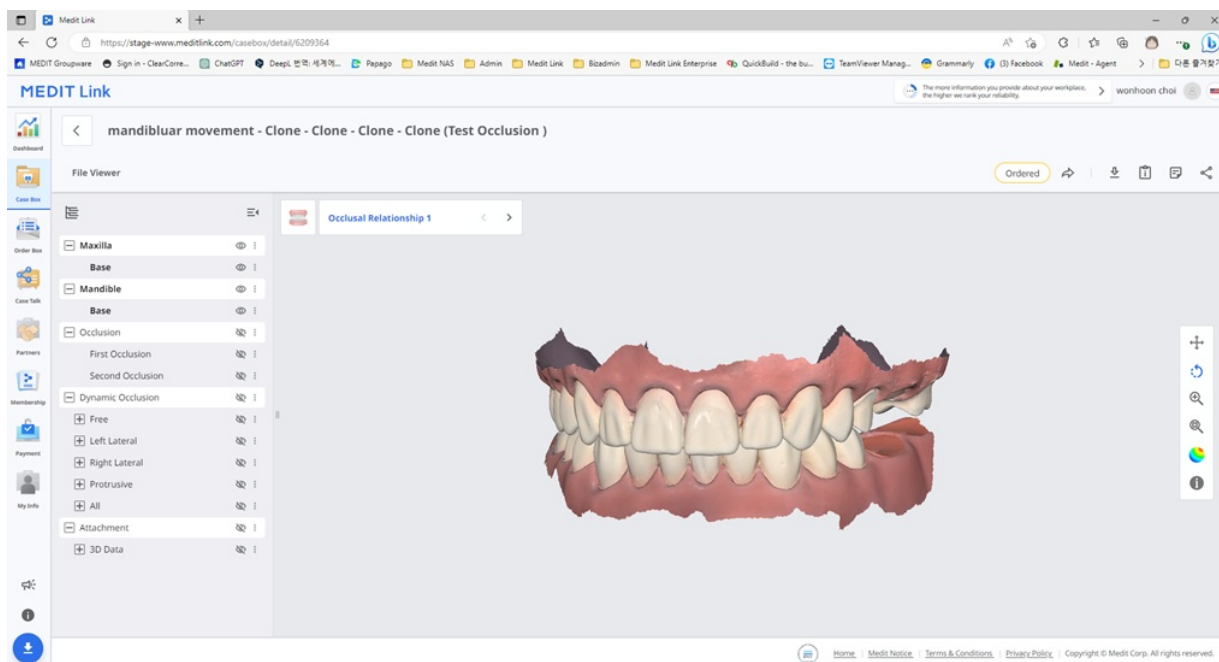

As seguintes funções de gerenciamento de caso são fornecidas na Case Box/Work Box.

	Estado do caso	Exibe o estado do caso.
	Ir para detalhes	Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Download	Faz o download dos arquivos no caso para o PC local.
	Informações sobre o caso	Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.
	Notas e etiquetas	Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.
	Compartilhar	Cria um link para compartilhamento. Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais. Você pode compartilhar o link livremente com qualquer pessoa ou apenas com pessoas específicas. Um código PIN ou uma data de validade do link podem ser definidos para proteger informações particulares.

Order Box/In Box

O Order Box (Clinic) ou In Box (Lab) mostra os casos pedidos no aplicativo Medit Link.

Detalhes da encomenda

1	Exibe os nomes do caso e do paciente.
2	Fornece funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).
3	Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.
4	Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.
5	Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.
6	Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.


Guias em Order Box/In Box

Pedido	Visualizador de arquivos
Verifique as informações detalhadas do pedido, como ID do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.	Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.

Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas que você determinar, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.

O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no "Case Talk" do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

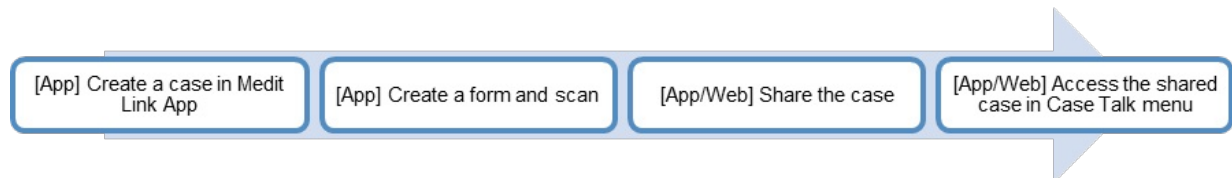

Casos compartilhados podem ser visualizados por meio de um navegador da web sem instalar um programa separado, permitindo uma comunicação fácil sobre os dados 3D em vários dispositivos.


Criação de um Case Talk

Você pode criar um link compartilhado para um caso criado no Case Box/Work Box.

1. Encontre um caso que deseja compartilhar e clique no botão "Compartilhar" à direita.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	CDL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Selecione os arquivos que deseja compartilhar.

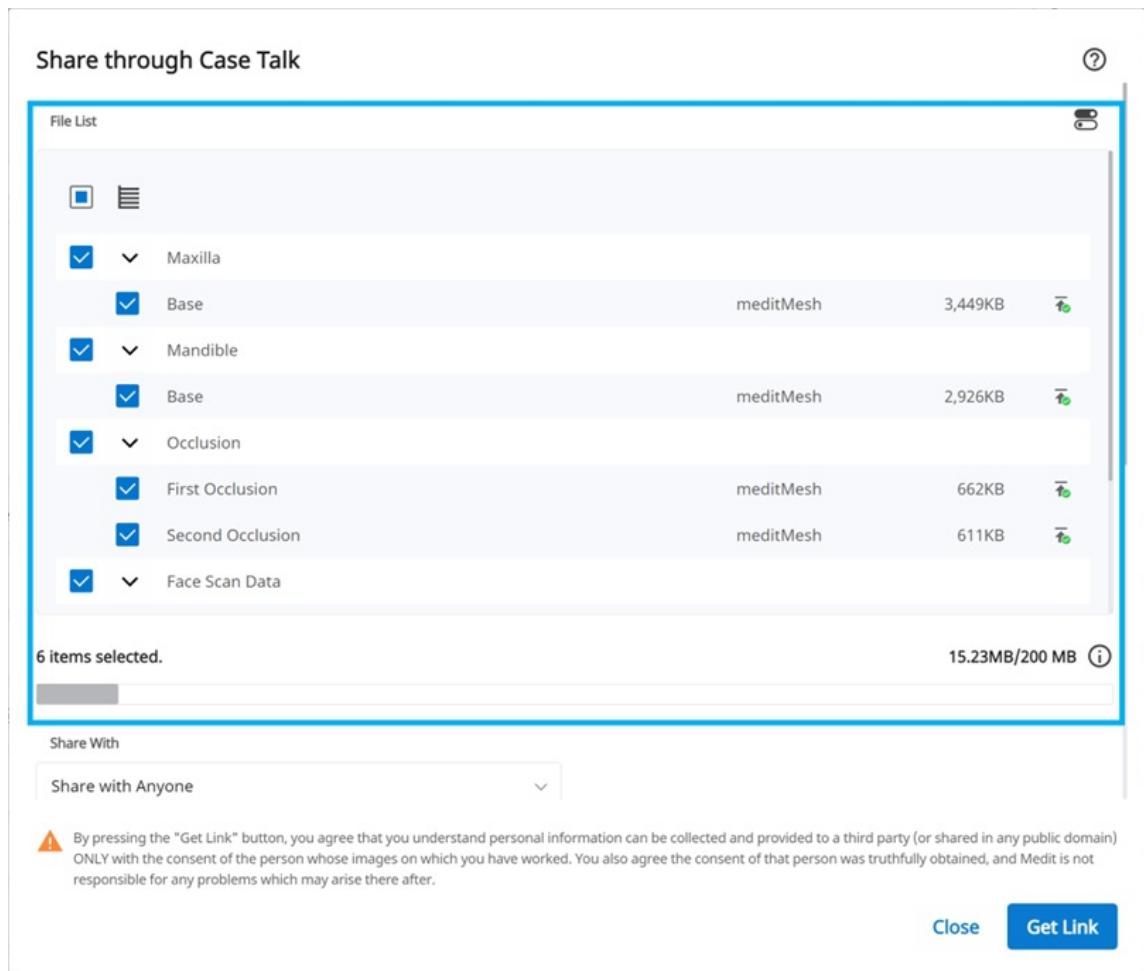

3. Defina o tipo de permissão de compartilhamento e as opções de compartilhamento.
4. Clique em "Obter link" para criar um link compartilhado.


Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento

Compartilhar com	• Compartilhar com qualquer pessoa Cria um link compartilhado. É possível compartilhar os arquivos com qualquer pessoa. • Compartilhar com pessoas em específico Cria e envia um link compartilhado para pessoas específicas.
Compartilhar via	Se você selecionar "Compartilhar com pessoas em específico", poderá compartilhar o link com pessoas específicas de várias maneiras. • Endereço de e-mail • SMS • Parceiros
Data de validade	Define a data de validade do link. Depois que passar a data de validade do link, as pessoas com quem você o compartilhou não poderão mais acessar os arquivos. Você pode prorrogar o período de validade por até 90 dias a partir da data atual.
Código PIN	Define um código de acesso de seis dígitos para garantir a segurança dos dados.
Compartilhar o nome do paciente	Se você marcar essa opção, todas as pessoas com o link verão o nome do paciente.
Conceder permissão de download	Caso você marque essa opção, todos os usuários com o link compartilhado poderão fazer download dos arquivos.

Permitir comentários	• Se você marcar essa opção, conseguirá se comunicar por meio do link compartilhado. • Se você desmarcar a opção, o destinatário só poderá visualizar seus comentários, mas não conseguirá adicionar os próprios comentários.
Comentário	Você pode deixar uma mensagem na seção de comentário.

Detalhes do Case Talk

Você pode ver os arquivos no caso compartilhado. As funções a seguir estão disponíveis na página de detalhes do Case Talk.

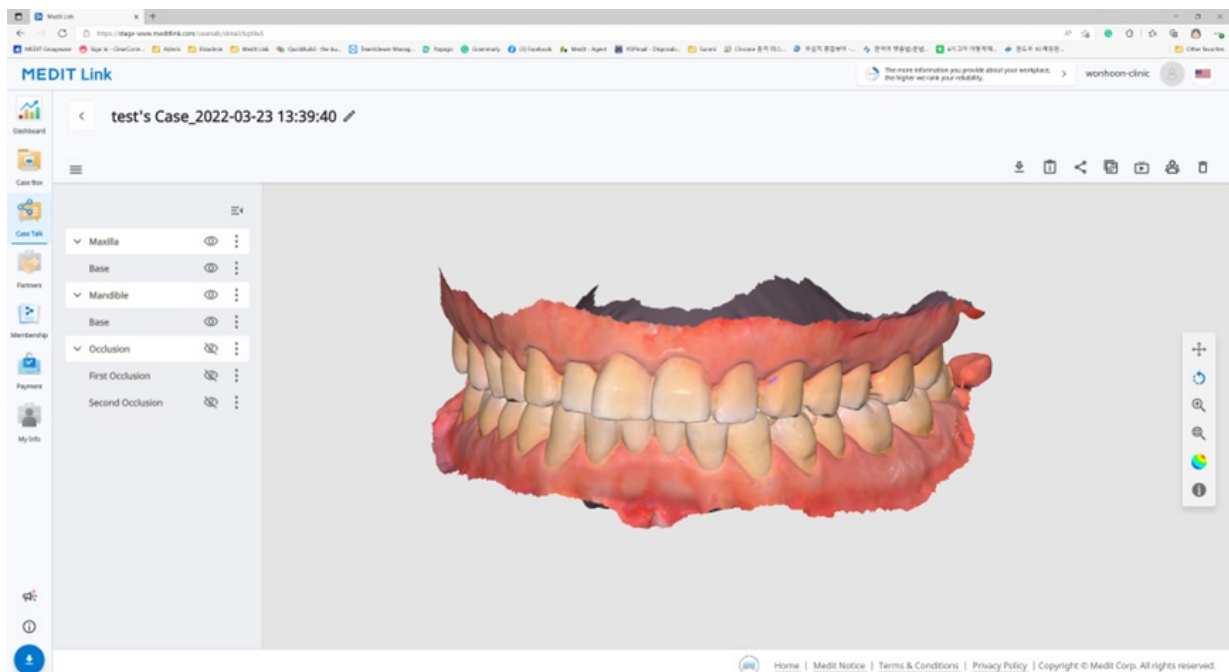

	Download	Faz o download de todos os arquivos desse caso para o PC local.
	Informações sobre o caso	Exibe informações detalhadas sobre o caso.
	Compartilhar	Modifica a configuração do compartilhamento.
	Copiar link	Copia o link compartilhado para a área de transferência. O link copiado mostra os arquivos compartilhados em seu navegador da web.
	Live	Compartilha a sua tela com os usuários conectados. O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados.
	Participantes	Mostra todos os usuários que estão acessando o link compartilhado.
	Excluir	Exclui o link compartilhado. O link compartilhado excluído deixa de estar acessível.

ⓘAviso


Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Live
- Participantes

Web Viewer

Você pode visualizar dados compartilhados pelo Case Talk em um navegador da web.

É possível se comunicar com as pessoas que têm acesso ao link usando anotações e comentários.

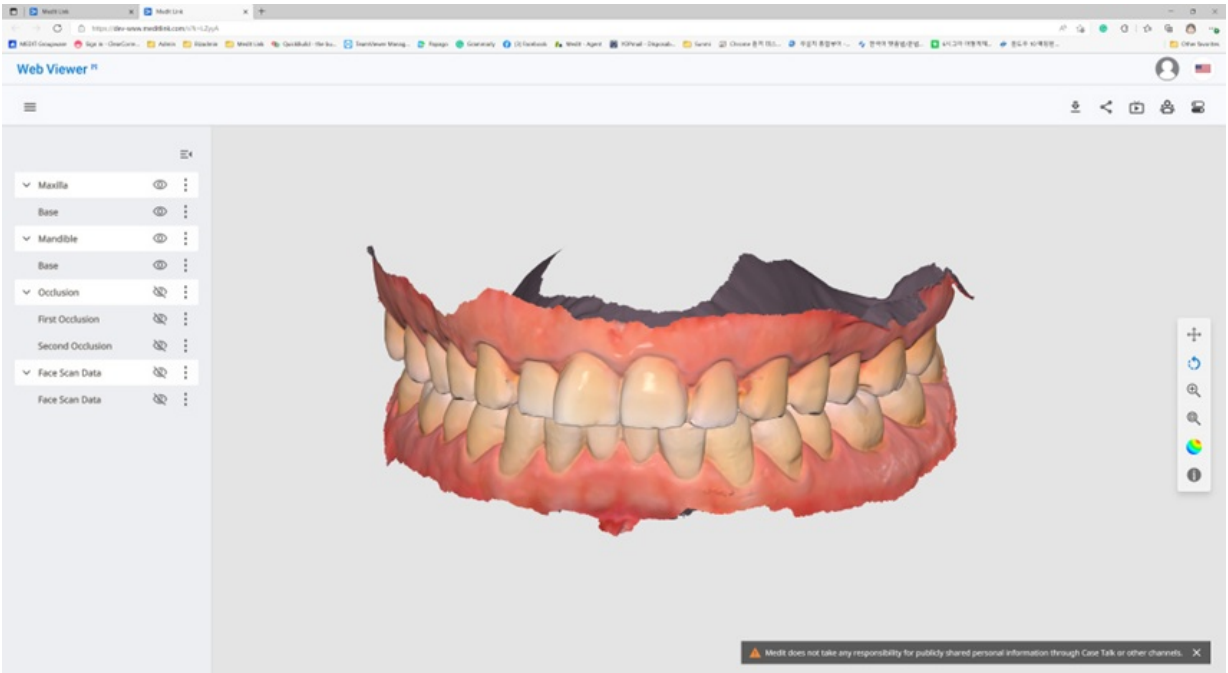


	Download	Faz o download de todos os arquivos neste caso para o PC.
	Informações sobre o caso	Exibe informações detalhadas sobre o caso.
	Compartilhar	Modifica as configurações do compartilhamento.
	Live	Compartilha a sua tela com os usuários conectados. O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados.
	Participantes	Mostra todos os usuários que estão conectados ao link compartilhado.
	Rotulagem dentária	Altera o sistema de rotulagem dentária.

Aviso
Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Live
- Participantes

Anotação

Você pode adicionar anotações a um local especificado no modelo 3D. Qualquer pessoa com o link pode visualizar as anotações que você adicionar.

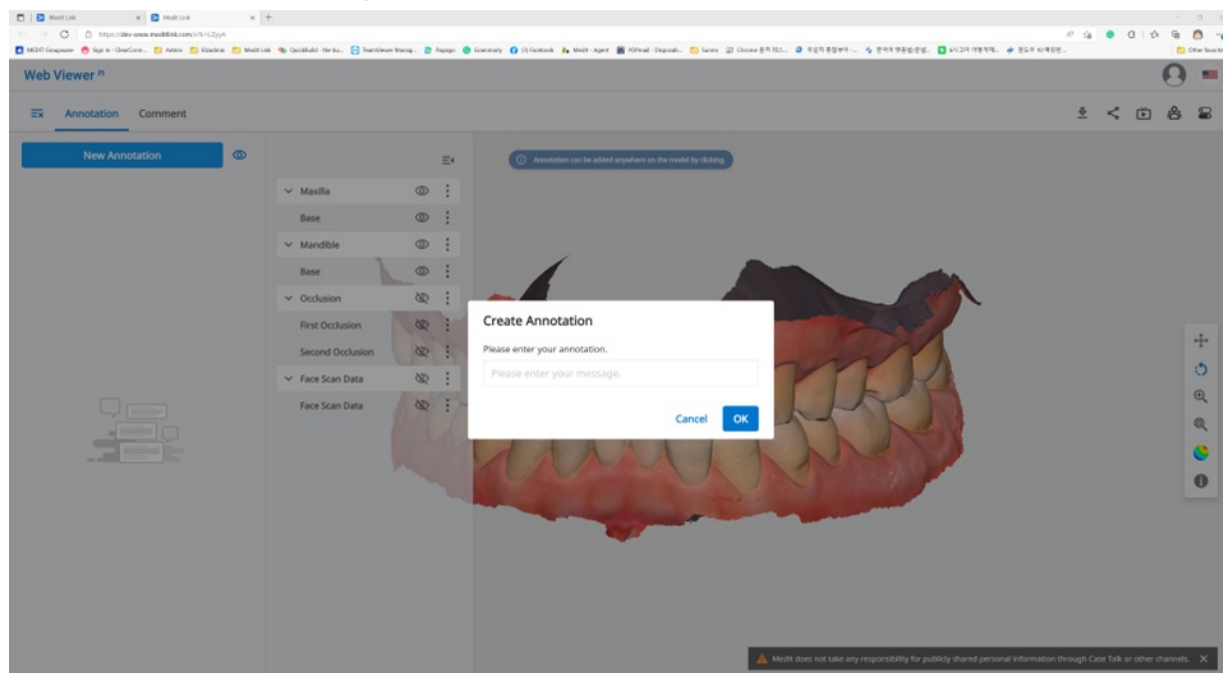

Aviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Anotação

1. Encontre o ícone do menu no canto superior esquerdo e selecione a guia "Anotação". Use o botão "Nova anotação" para adicionar uma anotação em qualquer lugar nos dados, com um clique.
2. Digite a mensagem e clique em "OK" para salvá-la.

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation', followed by the text 'Please enter your annotation.' and a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Você pode usar as anotações como um canal de comunicação simples. Clique na anotação criada para inserir uma resposta e clique em "Enviar".

This image shows the interface for replying to an annotation. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with delete and close icons. Below that is 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Comentários

Você pode se comunicar com os usuários que têm acesso ao link por meio da guia "Comentário" no menu do Web Viewer.

ⓘAviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- [Comentário](#)

Compartilhamento de tela em tempo real


Você pode compartilhar sua tela em tempo real.

ⓘAviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- [Live](#)

1. Clique em "Live" para compartilhar sua tela do Web Viewer com os usuários conectados.

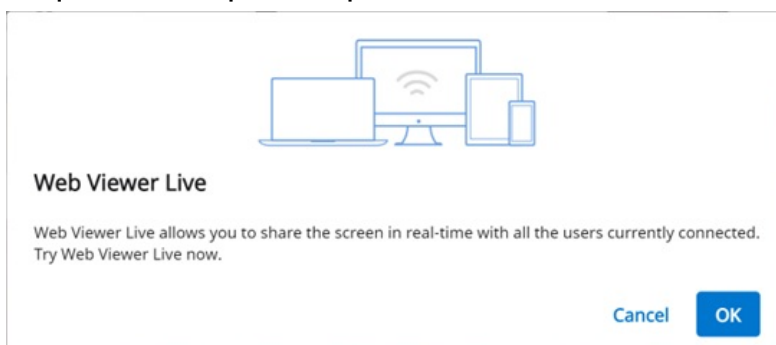



2. Clique em "OK" para começar a compartilhar a sua tela.
3. Outras pessoas que acessaram o link devem aceitar o compartilhamento de tela.
4. A tela do usuário que iniciou o compartilhamento de tela é exibida em sincronia com a tela da pessoa que recebeu a solicitação.

Árvore de dados

Todos os dados são agrupados e exibidos de acordo com os atributos na árvore de dados. É possível exibir ou ocultar dados, ajustar a opacidade e assim por diante.

Controles da árvore de dados

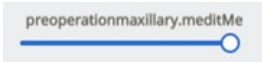Exibir/Ocultar	Clique no ícone de "olho" para exibir ou ocultar os dados da exibição. Controle a visibilidade dos dados como grupo ou como arquivo individual.
Opacidade	Passe o mouse sobre um elemento visível para ver a barra deslizante de opacidade. Ajuste a barra deslizante para alterar a transparência de seus dados. 

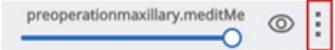Menu estendido	O menu estendido é fornecido à direita de cada elemento da Árvore de dados. Ele inclui as seguintes opções:  • Exibir somente este: Oculta todos os outros dados, exceto os dados atuais. • Ocultar: Oculta os dados atuais. • Duplicar: Clona dados dentro do caso atual. • Exportar: Salva dados em um PC local. • Excluir: Exclui os dados atuais ou o grupo de dados.
----------------	---

Controles de modelo 3D

	Panorâmico	Move o modelo.
	Rotacionar	Rotaciona o modelo.
	Aumentar/diminuir zoom	Aumenta ou diminui o zoom do modelo.
	Ajustar zoom	Posiciona o modelo no meio da tela.
	Modo de exibição do modelo	Ativar textura
		Exibe os dados em cores de textura reais.
	Modo de exibição do modelo	Desativar textura
		Exibe os dados em cor única.
	Configurações da grade (mm)	Ativar grade
		Mostra a grade no fundo.
	Configurações da grade (mm)	Ativar overlay
		Aplica overlay da grade sobre o modelo.

	Desativar grade	Ocultar a grade.
---	----------------------------	------------------

Parceiros

Você pode procurar parceiros em potencial para solicitar uma parceria e visualizar a lista de parceiros atuais e parceiros com contratos.


Aviso

Os serviços que usam o Google Maps não estão disponíveis no Medit Link China.

Procurar parceiros

É possível pesquisar usuários do Medit Link com base no nome e/ou endereço comercial.

Nos resultados da pesquisa, você pode enviar uma solicitação de parceria para uma organização com a qual gostaria de trabalhar.

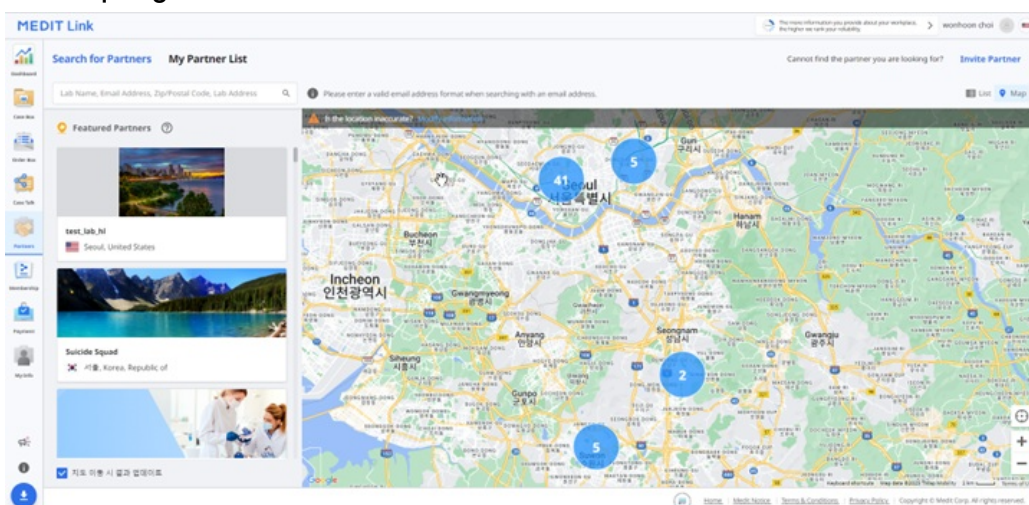


Minha lista de parceiros

Você pode revisar suas parcerias e contratos atuais com todos os seus negócios parceiros existentes em Minha lista de parceiros.

Como um contrato é diferente de uma parceria?

Depois de fazer parceria com uma empresa, você pode pedir para fechar um contrato com essa organização.

- Se o seu parceiro aceitar sua solicitação de contrato, você poderá proceder com o pagamento dos pedidos feitos.

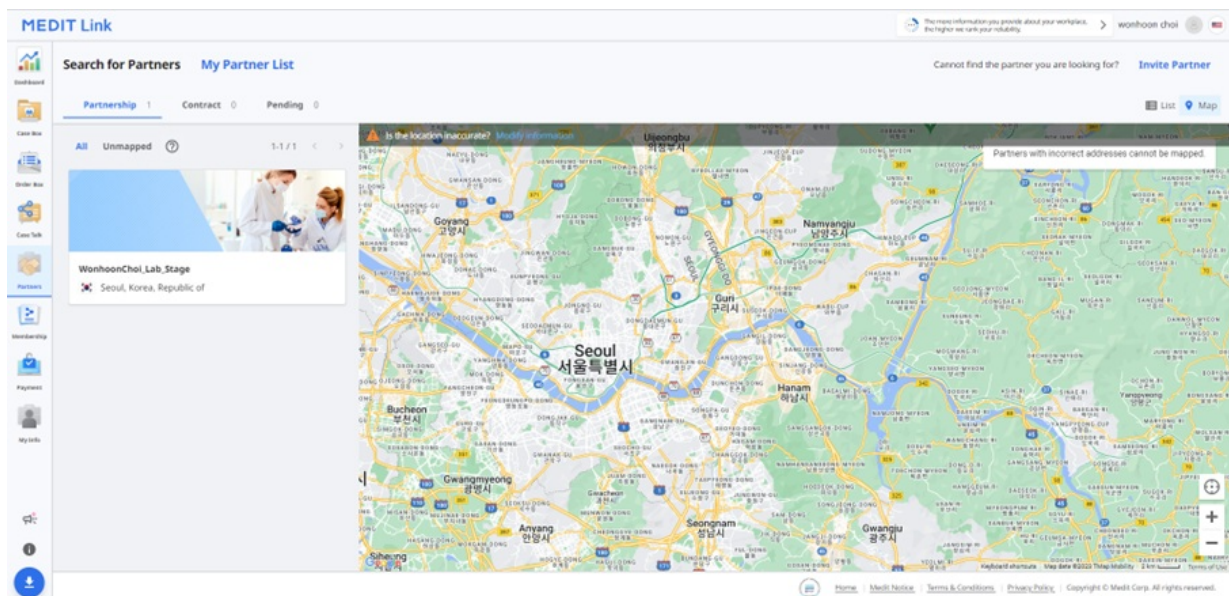

iAviso

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Contrato

Convite para parceiro

Se você tem uma organização com a qual deseja trabalhar, pode convidá-la para juntar-se ao Medit Link. A parceria será formada automaticamente assim que ela aceitar o convite.

1. Clique em "Convidar parceiro" no canto superior esquerdo da tela.
2. Digite o endereço de e-mail do fornecedor com quem deseja trabalhar e envie um convite com uma solicitação de parceria.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Assim que a organização convidada aceitar o convite e se cadastrar no Medit Link, a parceria será automaticamente estabelecida.

Assinatura

A política de assinatura do Medit Link visa estabelecer um ambiente digital mais amplo, expandindo-se gradativamente para fornecer diversos serviços baseados na plataforma em nuvem.

Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes uma experiência mais consistente e personalizada com nossa nova política de assinatura.

Estão disponíveis dois planos de assinatura:

Standard

- Plano padrão gratuito para todos os usuários cadastrados
- 1 GB de armazenamento em nuvem
- Para novos usuários

Premium

- Plano pago
- 10 TB de armazenamento em nuvem
- Para usuários com muitos casos e vários dados
- Teste gratuito por um mês

	Padrão	Premium
Armazenamento na nuvem	1 GB	10 TB
Assinatura mensal	Gratuito	US\$ 0,99/mês
* O Armazenamento na nuvem não calcula o espaço ocupado pelos Dados brutos.		

Aviso

Os planos de assinatura estarão disponíveis no Medit Link China. Você pode usar o plano Premium gratuitamente até o lançamento oficial do recurso.

Assinatura

MEDIT Link

Membership | Billing Info | Redeem

My Plan

Standard
Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Subscribe](#)

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Cloud Storage

Set Period: 2018-01-01 ~ 2023-04-06

353.21 MB / 1 GB

☐ Total Selected: 0.00 KB [Delete](#)

☐ **Raw Data** 11.97 GB
Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 353.21 MB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Meu plano

Na seção esquerda, você pode ver qual plano de assinatura você possui atualmente. Ali você também pode alterar o estado da sua assinatura a qualquer momento.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Armazenamento na nuvem

Na seção direita, você também pode gerenciar o armazenamento na nuvem.

Cloud Storage

Set Period

 2018-01-01 – 2021-10-07

[All](#) [1 Week Ago](#) [1 Month Ago](#) [6 Month Ago](#) [1 Year Ago](#)



☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐  **Raw Data** 147.52 GB

Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐  **Result Files & Attachments** 13.74 GB

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.


Definir período	Define o período específico para excluir os dados criados nesse intervalo de tempo. • Todos: Veja todos os arquivos. • Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação. • Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação. • Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação. • Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.
Dados brutos	Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente, etc.
Resultados e anexos	Os arquivos anexos e de resultado ocupam o espaço na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.
Excluir	Remove os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço.

Inscrever-se

Se você estiver no plano Padrão ou no plano Premium com um código de resgate, poderá fazer a assinatura Premium.

O pagamento é concluído por meio do serviço Stripe (www.stripe.com).

1. Clique no botão "Inscrever-se".

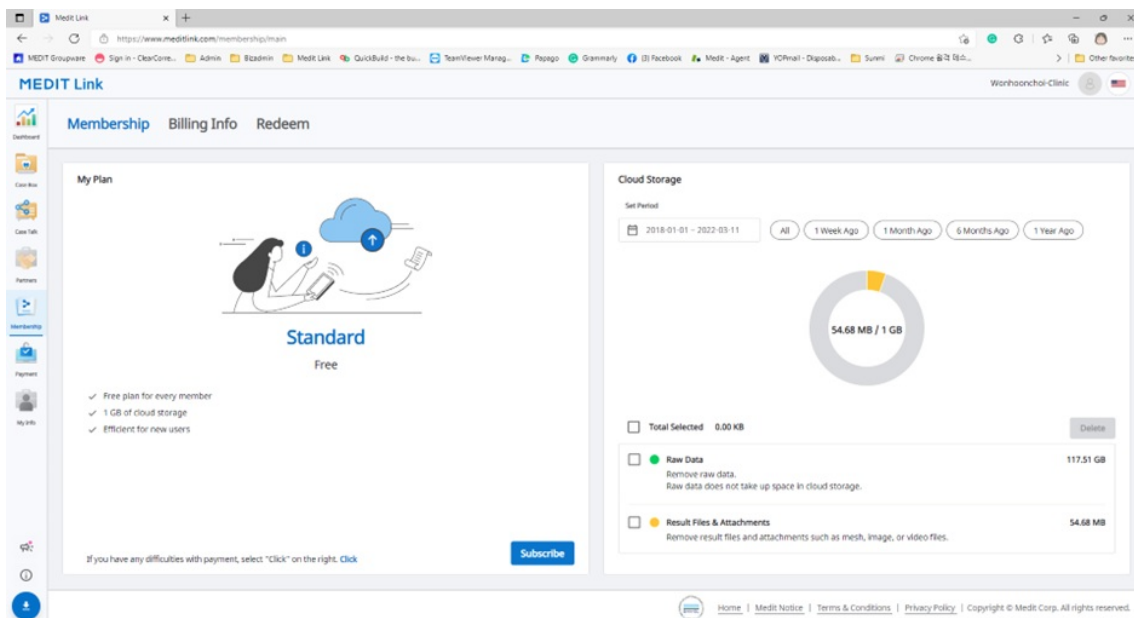

2. Verifique a descrição do plano Premium e clique em "Inscrever-se" novamente.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Verifique o preço e as condições e insira as informações necessárias para o pagamento. Depois, clique em “Inscrever-se”.

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. O pagamento pode levar alguns segundos. Quando terminar, você verá a mensagem de confirmação.

Subscribe Membership



Payment Successful.

[Invoice](#)

[Close](#)

Cancelar inscrição


Você pode cancelar a inscrição da assinatura a qualquer momento. Após cancelar a inscrição, você ainda poderá usar a assinatura Premium pelos dias restantes do mês já pago. Seu plano será alterado para Padrão a partir do próximo dia de pagamento e o armazenamento em nuvem será limitado a 1 GB. Se a capacidade de armazenamento em nuvem for ultrapassada, não será feito o backup dos arquivos e as funções de pedido e compartilhamento não estarão disponíveis.

1. Clique em "Cancelar inscrição".

The screenshot shows the MEDIT Link web interface. The 'Membership' tab is active. Under 'My Plan', the 'Premium' plan is listed at 0.99\$ USD / Monthly. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The 'Cloud Storage' section shows 0.00 KB / 10 TB used. Below this, there is a list of files to be deleted, including 'Raw Scan Files' and 'Result & Attachment'.

2. Clique em "Cancelar assinatura".

Cancel Subscription

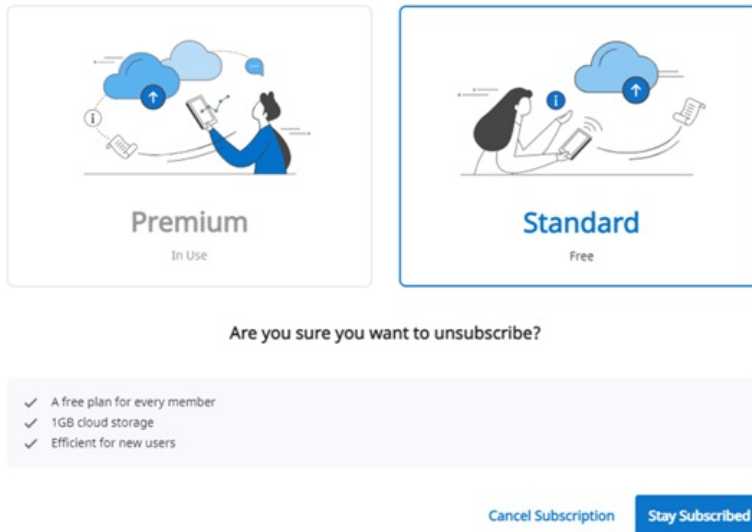


3. Para confirmar que deseja cancelar a inscrição, clique em "Cancelar assinatura" novamente na nova janela pop-up.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. A assinatura é cancelada.
5. Seu plano será alterado para Padrão a partir do próximo dia de pagamento e o armazenamento em nuvem será limitado a 1 GB. Se a capacidade de armazenamento em nuvem for ultrapassada, não será feito o backup dos arquivos e as funções de pedido e compartilhamento não estarão disponíveis.

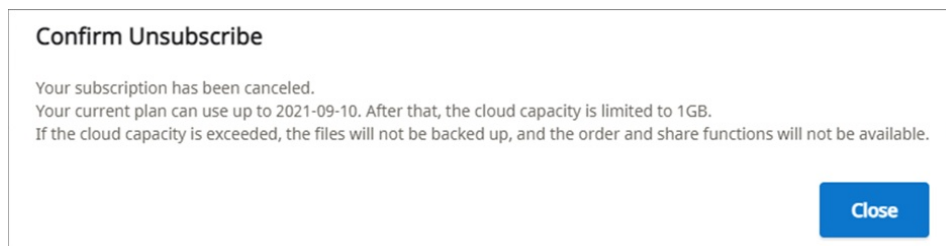

Informações da fatura

Você pode verificar o histórico de pagamentos das assinaturas, incluindo uma fatura de cada pagamento. Você também pode adicionar ou alterar o método de pagamento, que será aplicado a partir do próximo pagamento agendado.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Como adicionar um método de pagamento

1. Clique em "Editar método de pagamento".

This screenshot is identical to the previous one, but with a red rectangular box highlighting the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section.

2. Clique em "Adicionar método de pagamento".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Insira as informações necessárias e clique em "Adicionar".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. O método de pagamento recém-adicionado será definido como padrão e usado para o próximo pagamento.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Como alterar um método de pagamento

1. Clique no ícone do menu expandido ao lado do método de pagamento que deseja alterar na janela da caixa de diálogo de faturamento.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Clique em “Tornar padrão” para definir o cartão selecionado como o método de pagamento padrão.

The image shows a 'Billing' page with three main sections: 'CURRENT PLANS', 'PAYMENT METHODS', and 'BILLING INFORMATION'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. A red box highlights the 'Make default' and 'Delete' options for the second card. There is also a '+ Add payment method' link and a 'BILLING INFORMATION' section at the bottom.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021

VISA **** 4242 Expires 11/2021

+ Add payment method

Make default
Delete


BILLING INFORMATION

Resgatar


Registre o código de resgate fornecido como parte da promoção. Você pode usar a assinatura Premium com o código de resgate.

Registrar código de resgate

1. Insira o código de resgate e clique em "Registrar".

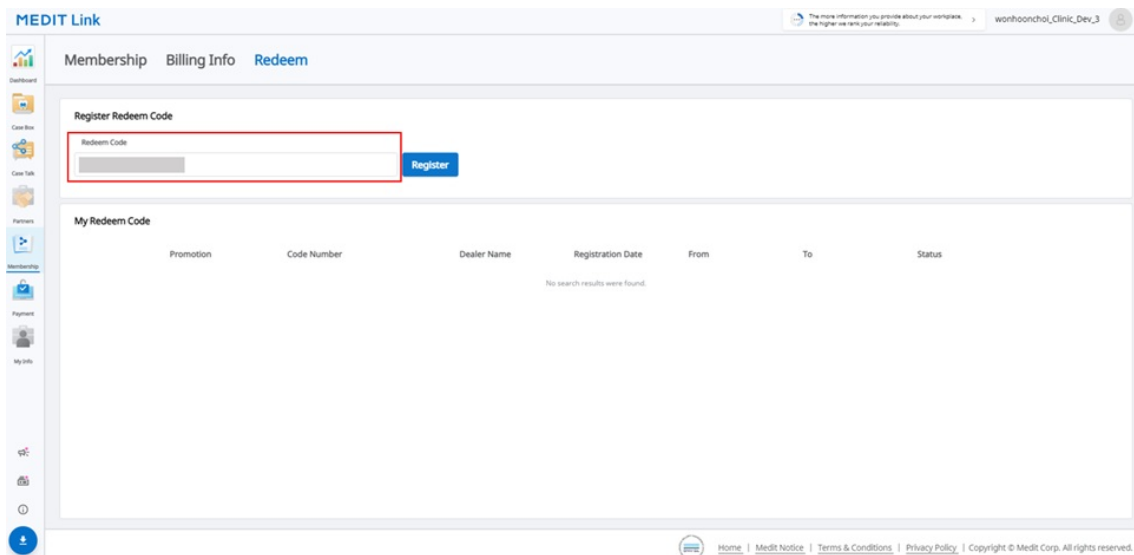

2. Leia o aviso e escolha "Registrar" ou "Aplicar" na caixa de diálogo pop-up.
 - **Registrar:** Registre o código de resgate. Você pode ativar e usar o código de resgate posteriormente após o registro.
 - **Aplicar:** Registre e ative o código de resgate. O desconto da promoção é aplicado imediatamente.

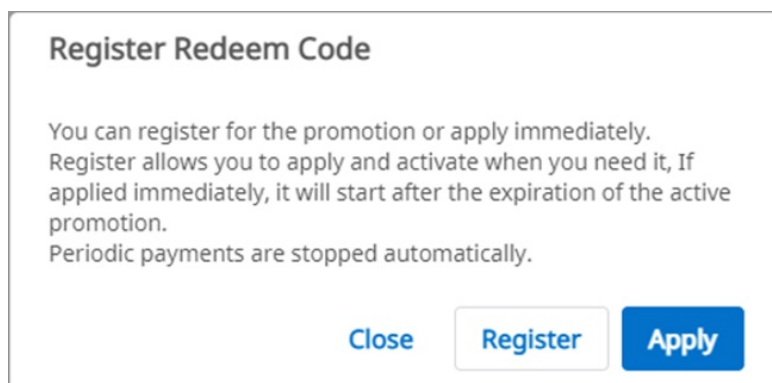

Ativar código de resgate

Você pode registrar vários códigos de resgate, mas precisa ativar aquele que deseja usar.

1. Clique no botão "Ativar" ao lado do código que deseja usar.
Se não houver nenhum código com o estado "Ativo", o que você escolher será aplicado imediatamente. Se algum código já estiver ativado, seu estado mudará para "Aguardando" e o que você escolheu será usado. Quando o código de resgate atual expirar, o código em espera será reativado automaticamente.
2. **ⓘAviso**
Apenas um código pode estar no estado "Aguardando".

Medit Link

[Sign in - ClearCore...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome](#)
[로그인](#)
[로그아웃](#)

MEDIT Link

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Pagamento

ⓘ Aviso


O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Pagamento

Detalhes de pagamento (contas de clínicas e laboratórios)

Você pode verificar o histórico de pagamentos e transações entre você e seus parceiros por meio da página Detalhe de pagamento.

Informações sobre a conta de pagamento (apenas conta de laboratório)

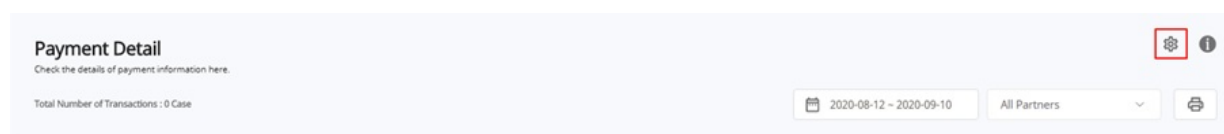

Essa funcionalidade está disponível apenas para a conta do administrador do laboratório para permitir que ele insira informações para serem pagos por seus parceiros.

- Você deve inserir as informações da sua conta de pagamento para que seus parceiros façam pedidos por meio do sistema de pagamento online.

ⓘ Aviso

Se você selecionar um país onde o Stripe é suportado, você será direcionado ao Stripe ao clicar em um botão para se inscrever nele.

Você poderá selecionar a Coreia do Sul e, então, inserir um número de conta bancária local para receber o pagamento e a KCP processará o seu pagamento.

Minhas informações

Minha conta

Aqui você pode revisar e editar as informações fornecidas durante o registro e verificar seu estado de assinatura.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1

JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address

[Change Email Address](#)

Password

[Change Password](#)

Name

Language

 한국어 (대한민국) ▼

Country

 Korea, Republic of ▼

2

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name

Minha organização (apenas conta de Administrador)

Aqui você pode revisar e editar as informações sobre sua organização. Essa seção está disponível apenas para contas do tipo administrador.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

✓ Address Information

✓ Organization Information

○ Additional Information

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *

[View Location on Map](#)

1

Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O

2

Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2

1

Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *

City *

Country *

 Korea, Republic of ▼

State/Province *

3

If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *

+ 82

Mobile Phone (Optional)

+ 82

48

Meu scanner

Você pode verificar as informações do dispositivo conectado para a conta.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Minha lista de preços (apenas conta de Administrador de laboratório)

Você pode inserir os produtos oferecidos pelo seu laboratório e as informações de preço de cada um.

My Account My Organization **My Scanner** **My Price List**

Teeth Arch

AED (₩) ▼

✓ All (99/557)

Inlay (8/12)

Onlay (8/12)

Coping (10/17)

Denture Coping (5/5)

Crown (15/26)

Pontic (23/36)

Post & Core (3/4)

Veneer (8/11)

Implant Crown (12/53)

Custom Abutment (2/3)

Surgical Guide (1/1)

Offset Substructure (4/5)

Partial Denture (0/7)

Diagnostic Wax-Up (0/1)

Custom Abutment + Implant Crown (0/159)

Custom Abutment + Coping (0/45)

Post & Core + Crown (0/100)

Post & Core + Coping (0/50)

Name

Type

Method

Material

Price

인레이 지르코니아

Inlay

-

Zirconia

₩6.03

인레이 골드

Inlay

-

Gold

1.03

인레이 프레스 세라믹

Inlay

-

Press Ceramic

2.03

인레이 레진

Inlay

-

Resin

3.03

인레이 하이브리드 세라믹

Inlay

-

Hybrid Ceramic

4.03

인레이 글라스 세라믹

Inlay

-

Glass Ceramic

1.00

인레이 컴퍼지트 레진

Inlay

-

Composite Resin

1.00

인레이 e.max

Inlay

-

e.max

1.00

Save

Aviso

- Depois de contratar um parceiro, ele pode fazer o pedido dos seus produtos com base nessa lista de produtos e preços.
- Caso tenha apenas parceria com o seu parceiro, a Medit Link não oferecerá suporte a pedidos que exijam informação de preços.

49

Menu Outros

Aviso e atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informações da Medit

Você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro de Ajuda Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Download do aplicativo Medit Link

Você pode baixar a versão mais recente do instalador do programa a partir da internet. Esse menu é útil quando você perde o instalador fornecido no pacote do produto ou possui um instalador desatualizado.

Aviso

O Medit Link se atualiza automaticamente quando você tem uma conexão com a Internet.

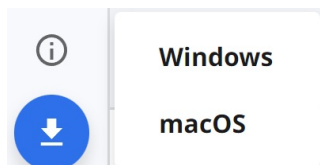

Visão geral

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 시뮬한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

1	Barra de título	Consulte Aplicativo Medit Link > Barra de título para obter informações detalhadas.
2	Menu	Consulte Aplicativo Medit Link > Menu para obter informações detalhadas.
3	Ferramentas e funções	Consulte Aplicativo Medit Link > Visualizador de arquivos e Aplicativo Medit Link > Visualizar opções para obter informações detalhadas.
4	Lista de casos	Consulte Aplicativo Medit Link > Filtragem e pesquisa para obter informações detalhadas.

Visão geral de caixa

Fluxo de trabalho		Conta de clínica	Conta de laboratório
Etapa 1	Criar casos	Case Box: Crie casos e os pesquise e visualize facilmente com várias opções de filtragem e pesquisa. Com o caso criado, você pode se vincular diretamente a programas de escaneamento e programas CAD para trabalhar neles.	
Etapa 2	Pedir/gerenciar casos	Order Box: Gerencie casos pedidos. São fornecidas funções para gerenciar o processo, desde o pedido até a conclusão dos casos.	In Box: Gerencie casos de pedidos recebidos. São fornecidas funções para gerenciar o processo de aceitação, rejeição, envio e conclusão de casos.


Etapa 3	Trabalhar em escaneamento/CAD		Work Box: gerencie casos que tenham sido encaminhados do In Box ou que você criou. Você pode se vincular diretamente a programas de escaneamento e programas CAD para trabalhar neles.
Etapa 4	Compartilhar casos	Case Talk: Compartilhe os casos criados com restrições, sem restrições, com pessoas específicas ou outros membros registrados do Medit Link.	
Etapa 5	Trabalho complementar ou adicional	App Box: Utilize uma variedade de aplicativos que complementam seu fluxo de trabalho odontológico digital. Você pode baixar e instalar aplicativos da Medit ou de terceiros.	
Etapa 6	Excluir/Restaurar casos	Trash Box: Visualize, restaure ou exclua permanentemente casos da Trash Box.	

A tabela abaixo resume quais caixas estão disponíveis em cada tipo de conta de clínica e de laboratório.

Tipo da conta		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Contas de clínica	Administrador	O	O	X	X	O	O	O
	Membro	O	X	X	X	O	O * Apenas funcionalidade de restauração	O
Contas de laboratório	Administrador	X	X	O	O	O	O	O
	Membro	X	X	X	O	O	O * Apenas funcionalidade de restauração	O

Barra de título

A barra de título fornece acesso rápido a recursos como estado da rede, sincronização em nuvem e notificações.

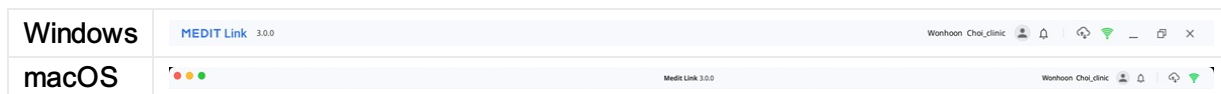

Minhas informações

Minhas informações contêm informações básicas de usuário, como imagem de perfil, nome da organização, endereço de e-mail e nome de usuário.

Também fornecem uma opção de logout e um atalho para a página Minha conta no Medit Link Web.

1	Exibe a imagem do perfil.
2	Exibe o nome da organização, o endereço de e-mail e o nome de usuário.
3	Faz logout da conta atual.
4	Acesse o Medit Link Web enquanto estiver conectado à conta atual. Você pode visualizar, editar e gerenciar as informações da conta inseridas quando se cadastrou.

Notificações

Você pode ver notificações relacionadas a contratos, pedidos e processos de trabalho.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Marque a caixa para mostrar apenas as mensagens não lidas. |
| 2 | Clique em qualquer notificação a fim de ir instantaneamente para o caso ou página da web relacionado. |

Gerenciador da sincronização de casos

O Gerenciador da sincronização de casos ajuda a fazer upload e download de casos no Medit Link. Você pode fazer o upload de vários casos para a nuvem ou fazer o download deles para o PC local.

[illegible]

Upload

Total de casos/Casos selecionados	Verifique o número de todos os casos/casos selecionados que precisam ser transferidos por upload.
Upload de todos	Faça o upload de todos os casos para a nuvem.
Cancelar todos	Cancele todas as solicitações de upload.
	Faça o upload do caso para a nuvem.
	Cancele o upload do caso.
	Tente novamente fazer o upload do caso.

Download

Total de casos/Casos selecionados	Verifique o número de todos os casos/casos selecionados que precisam ser baixados por download.
Baixar todos	Faça o download de todos os casos para o PC.
Cancelar todos	Cancele todas as solicitações de download.
	Faça o download do caso para o PC.

	Cancele o download do caso.
	Tente novamente fazer o download do caso.

Estado da rede

O Medit Link permite que você use todas as funcionalidades de forma integrada quando estiver conectado a uma rede.

Para ajudá-lo a verificar o estado da sua conexão de rede em tempo real, o ícone de estado de rede é exibido na barra de título.

Se a conexão de rede não estiver boa, poderão ocorrer as seguintes restrições:

- Algumas funções, como pedido de caso, criação de caso, compartilhamento via Case Talk e sincronização em nuvem, serão restritas.
- O desempenho geral do serviço pode ser reduzido devido ao impacto do ambiente de rede.

Nesse caso, você pode entrar no modo offline para realizar tarefas básicas e, depois, usar as funcionalidades que precisam de Internet quando estiver conectado novamente.

Aviso

O símbolo de rede indica a velocidade de resposta entre a área atual e o AWS (Amazon Web Service). Isso não significa a velocidade da sua rede, por isso, às vezes, poderá mostrar o estado como razoável ou ruim, mesmo que a velocidade da sua rede seja rápida o suficiente.


Se o outro processo usar a mesma rede, a velocidade poderá ser razoável ou ruim e o desempenho geral do Medit Link poderá ser ruim. Nesse caso, não compartilhe a rede com outros processos.

Por exemplo, a funcionalidade "Fazer upload de dados brutos" ocupa grande parte do processo de rede. Se o símbolo mostrar um estado razoável ou ruim, acesse Configurações > Fazer upload de dados brutos e desative "Upload automático".

Menu

Dashborad


É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

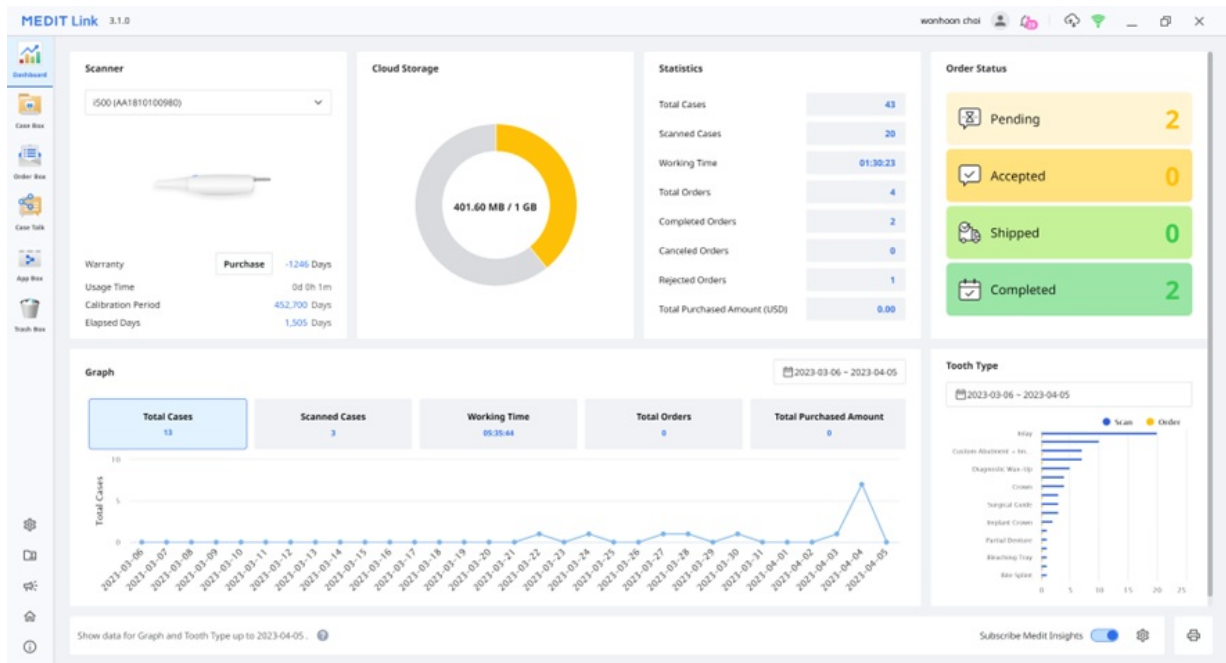

Aviso

Consulte [Medit Link Web > Dashboard](#) para obter mais informações sobre o dashboard e o Medit Insights.

Case Box/Work Box

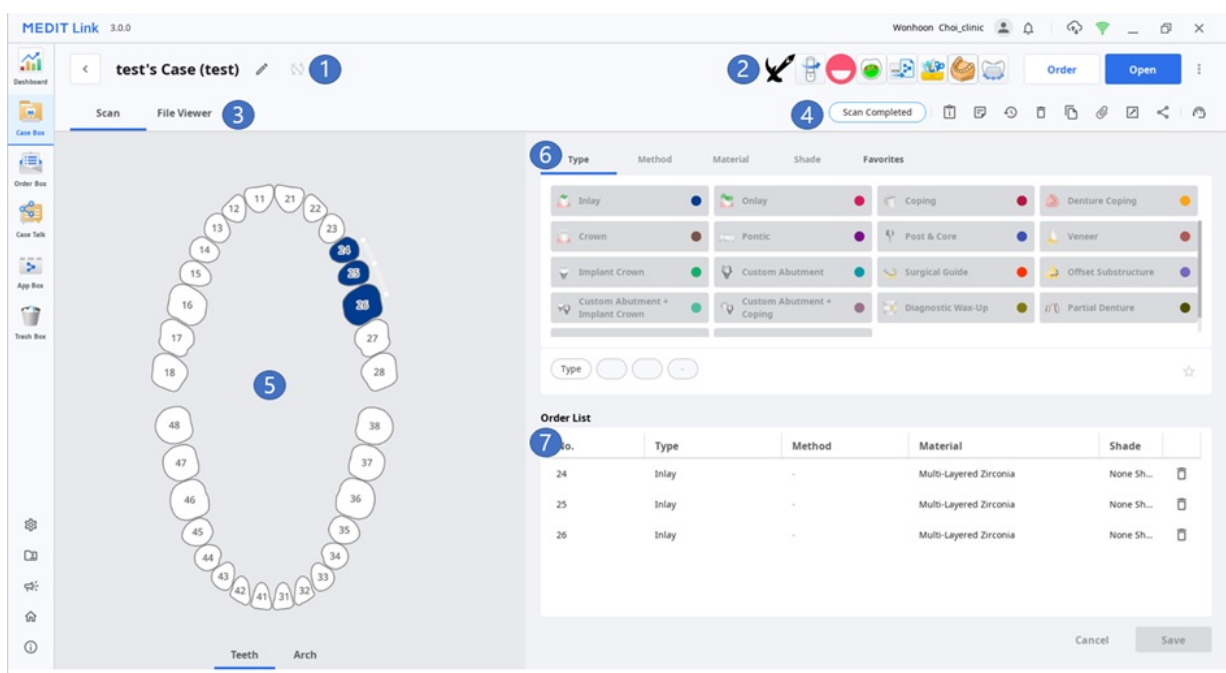

1	Exibe os nomes do caso e do paciente.
2	Fornece as principais funcionalidades disponíveis: Botões Pedido/Escanear (Abrir)/Pedido e ícones de aplicativos.
3	Exibe as guais disponíveis: Formulário, CAD e Visualizador de arquivos.
4	Exibe funções de gerenciamento de casos e arquivos:
5	Mostra a IU de registro de formulário para o programa CAD selecionado.
6	Fornece as informações de tipo/método/material/tonalidade para os usuários escolherem em relação ao número de dente selecionado.
7	Exibe as informações de tipo/método/material/tonalidade aplicadas aos dentes selecionados.

Guias em Case Box/Work Box

Formulário	CAD	Visualizador de arquivos
A guia de formulário fornece uma UI para inserir informações básicas para o trabalho de escaneamento, como tipo, método, material para números de dentes e opções de escaneamento. As informações inseridas são passadas para o programa de escaneamento conectado e usadas como informações de pedido ao fazer um pedido para o seu parceiro.	A guia CAD fornece uma UI para definir opções de CAD. As informações configuradas são repassadas para o programa CAD conectado.	Visualize os arquivos de resultados gerados pelos programas de escaneamento e CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.


Funções em Case Box/Work Box

As seguintes funções são fornecidas na Case Box/Work Box.

	Estado do caso	Exibe o estado do caso.
	Ir para detalhes	Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informações sobre o caso	Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.
	Notas e etiquetas	Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.

	Histórico do caso	Fornece informações detalhadas sobre o histórico do caso. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Excluir	Exclui o caso. Não é possível excluir casos solicitados ou criados offline.								
	Clonar	Cria uma duplicata do caso atual na Case Box. Todos os dados serão copiados para o caso clonado. Essa funcionalidade ajuda a replicar informações de tratamento para o mesmo paciente ou fazer um pedido adicional com as mesmas informações ou arquivos.								
	Anexar	Anexa arquivos em vários formatos.								
	Exportar	Exporta arquivos de resultado de escaneamento ou CAD para o PC local. Você pode escolher seu formato de arquivo preferido ao exportar arquivos. Os arquivos exportados podem ser usados para trabalho posterior em software CAD e CAM.								
	Compartilhar	Cria um link para compartilhamento. Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais. É possível compartilhar o link livremente com qualquer pessoa ou apenas com pessoas específicas. Um código PIN ou uma data de validade do link podem ser definidos para proteger informações particulares.								
	Enviar pedido de suporte	Abre a página do Centro de Ajuda Medit para permitir o envio de um pedido de suporte.								

Order Box/In Box

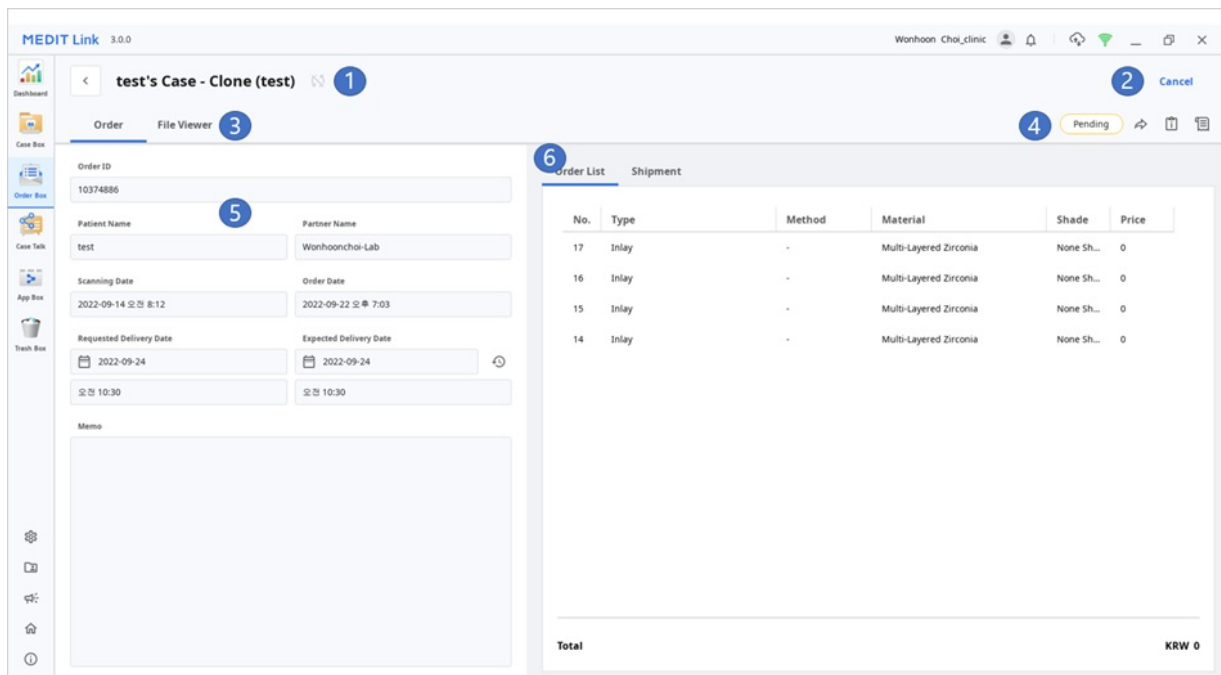

1	Exibe os nomes do caso e do paciente.
2	Fornecer funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).
3	Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.
4	Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.
5	Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.
6	Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.

Guias em Order Box/In Box

Pedido	Visualizador de arquivos
Verifique as informações detalhadas relacionadas ao pedido, como número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas.	Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D.

Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas que você determinar, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.


O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no Case Talk do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

Aviso

O serviço Case Talk exige conexão com a internet.

⚠ Cuidado

Os dados excluídos da Trash Box serão excluídos permanentemente do seu PC e do servidor e não poderão ser recuperados.

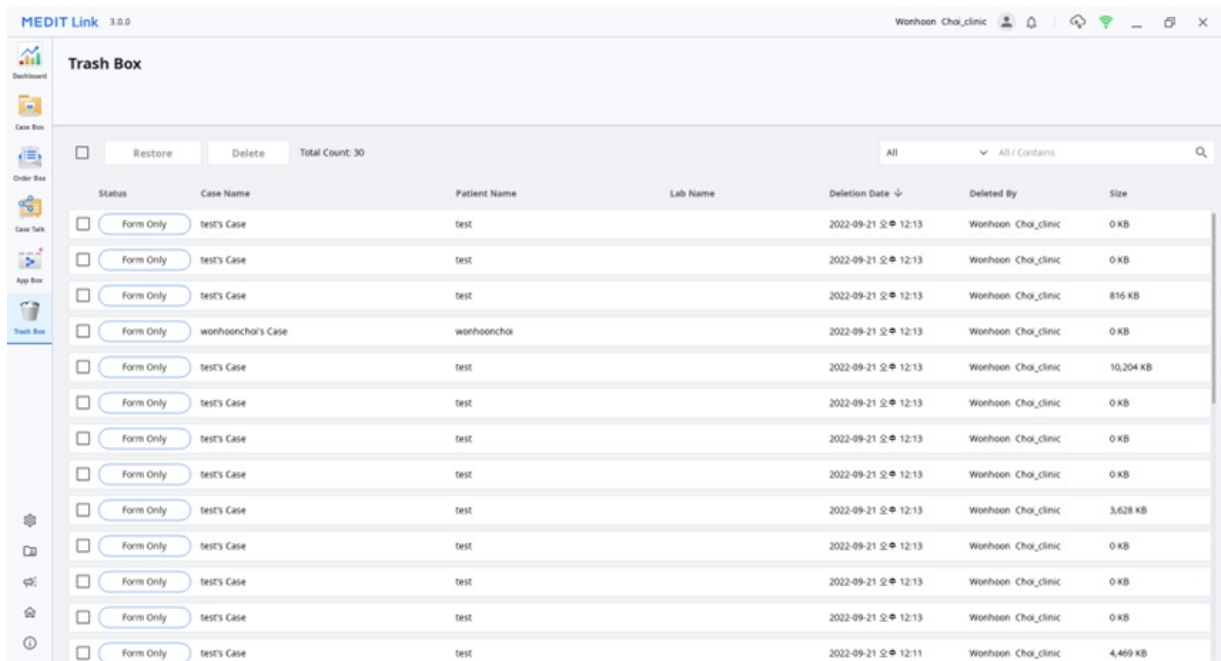


Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Configurações

Consulte [Aplicativo Medit Link > Configurações](#) para obter informações detalhadas sobre a janela Configurações.

Gerenciamento do paciente

É possível adicionar, editar, excluir ou mesclar pacientes na janela Gerenciamento do paciente.

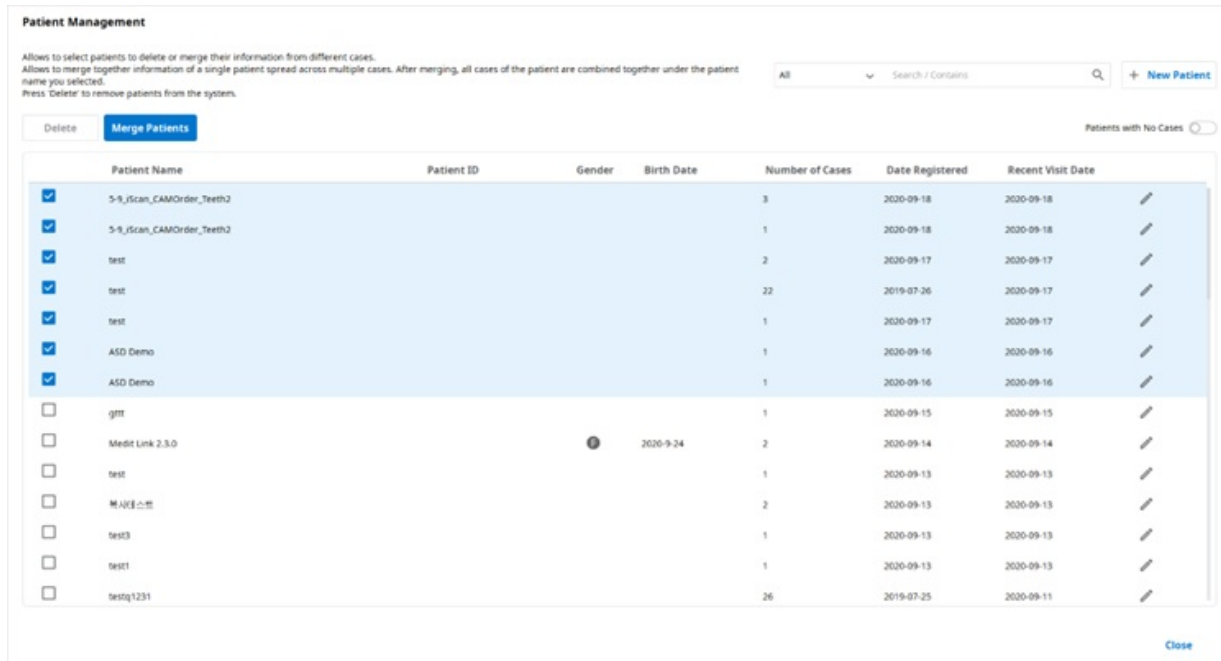

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
5-9_Scan_CAMOrder_Tooth2				3	2020-09-18	2020-09-18
5-9_Scan_CAMOrder_Tooth2				1	2020-09-18	2020-09-18
test				2	2020-09-17	2020-09-17
test				22	2019-07-26	2020-09-17
test				1	2020-09-17	2020-09-17
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
grrt				1	2020-09-15	2020-09-15
Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14
test				1	2020-09-13	2020-09-13
test3				2	2020-09-13	2020-09-13
test1				1	2020-09-13	2020-09-13
testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11

Adicionar novo paciente

1. Clique em "Novo paciente".

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Preencha as informações necessárias na caixa de diálogo Novo paciente e clique em "Salvar".

Excluir paciente

Aviso

Você pode excluir um paciente apenas se não houver casos para ele.

1. Selecione o paciente a ser excluído da lista.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.J Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	salkjadoklf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. Clique em "Excluir".

Mesclar pacientes

Você pode mesclar todos os casos de vários pacientes em um paciente.

1. Selecione os pacientes que você deseja mesclar da lista.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

Search / Contains

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				8	2020-09-18	2020-09-18	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	grrr				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试用例005				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

2. Clique em "Mesclar pacientes".
3. Selecione o paciente alvo no qual você gostaria de mesclar todos os casos.
4. Todos os casos são mesclados no paciente alvo e as informações do paciente alvo são mantidas.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

5. Clique em "Aplicar" para continuar com a mesclagem.

Aviso e atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

Ir ao Medit Link Web

Abrirá o Medit Link Web com a conta atual à qual você está conectado.

Informações da Medit

Você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro de Ajuda Medit.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



Configurações

Geral

Fornece opções para a configuração geral do sistema.

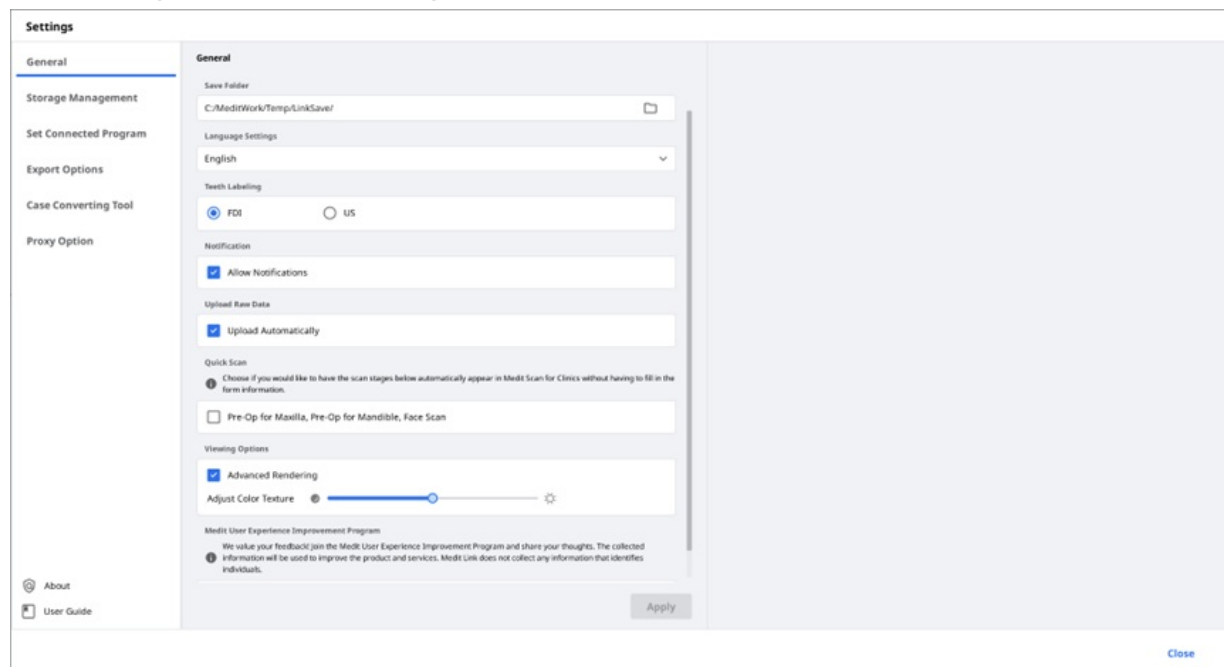


Pasta de salvamento	Especifica uma pasta para armazenar os resultados de dados gerados pelo Medit Link e programas conectados.	
Configurações de idioma	Seleciona o idioma para o programa.	
Rotulagem dentária	Seleciona um sistema de rotulagem dentária entre FDI e US.	
Notificações	Quando marcada, você receberá notificações de atualizações do programa.	
Fazer upload de dados brutos	Quando marcada, os dados brutos são carregados automaticamente para a nuvem. Isso ajuda a fazer backup dos dados originais e executar o escaneamento contínuo ao usar o Medit Link com a mesma conta em outro PC. O backup na nuvem de dados originais se aplica apenas aos dados adquiridos no Medit Scan for Clinics.	
Escaneamento rápido	Escolha se você gostaria que as etapas de escaneamento aparecessem automaticamente na parte de baixo no Medit Scan for Clinics, sem ter que preencher as informações do formulário. • Pré-operatório para maxila • Pré-operatório para mandíbula • Escaneamento da face	
Opções de visualização	Renderização avançada	Quando marcada, o modelo 3D é exibido em uma renderização mais vívida e realista.
	Ajustar textura de cor	Ajusta o brilho do modelo 3D. * As cores resultantes podem diferir ligeiramente do Medit Link quando você abre os mesmos dados com outro software.

Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit

- Participe do Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit.
- Usamos as informações coletadas para melhorar nossos produtos e serviços.
 - Não coletamos nenhuma informação que identifique indivíduos.

Gerenciamento do armazenamento

Verifique e gerencie o espaço de armazenamento local e na nuvem.

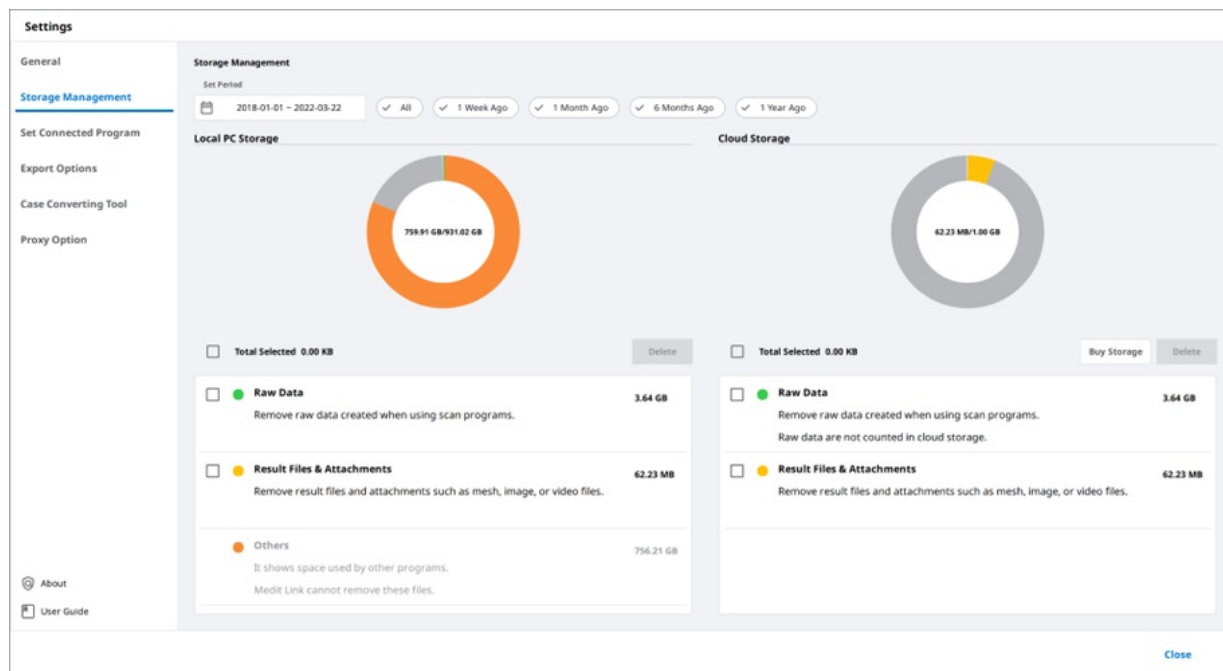

Definir período

Define o período específico para excluir os dados criados no intervalo de tempo abaixo.

- Todos: Veja todos os arquivos.
- Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação.
- Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação.
- Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação.
- Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.

Armazenamento local

Gerencie o espaço de armazenamento do PC.

Dados brutos	Remova os dados brutos selecionados do PC. Se os dados brutos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser.
Resultados e anexos	Remova os arquivos de resultado e anexos do PC, como malha, imagens e vídeos. Se esses arquivos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser.

Outros	Veja os arquivos usados para operar o sistema e outros programas. Isso mostra o armazenamento do seu PC. Você não pode remover esses arquivos do Medit Link.
Excluir	Remova os arquivos selecionados do PC.


Armazenamento na nuvem

Gerencie o espaço de armazenamento na nuvem.

Dados brutos	Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente, etc.
Resultados e anexos	Os arquivos de anexos e de resultado ocupam o espaço no armazenamento na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.
Comprar armazenamento	Se você estiver no plano Padrão, assine o Premium para expandir seu armazenamento em nuvem.
Excluir	Remova os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço de armazenamento.

Definir o programa conectado

Gerencie os programas que suportam a integração ao Medit Link.

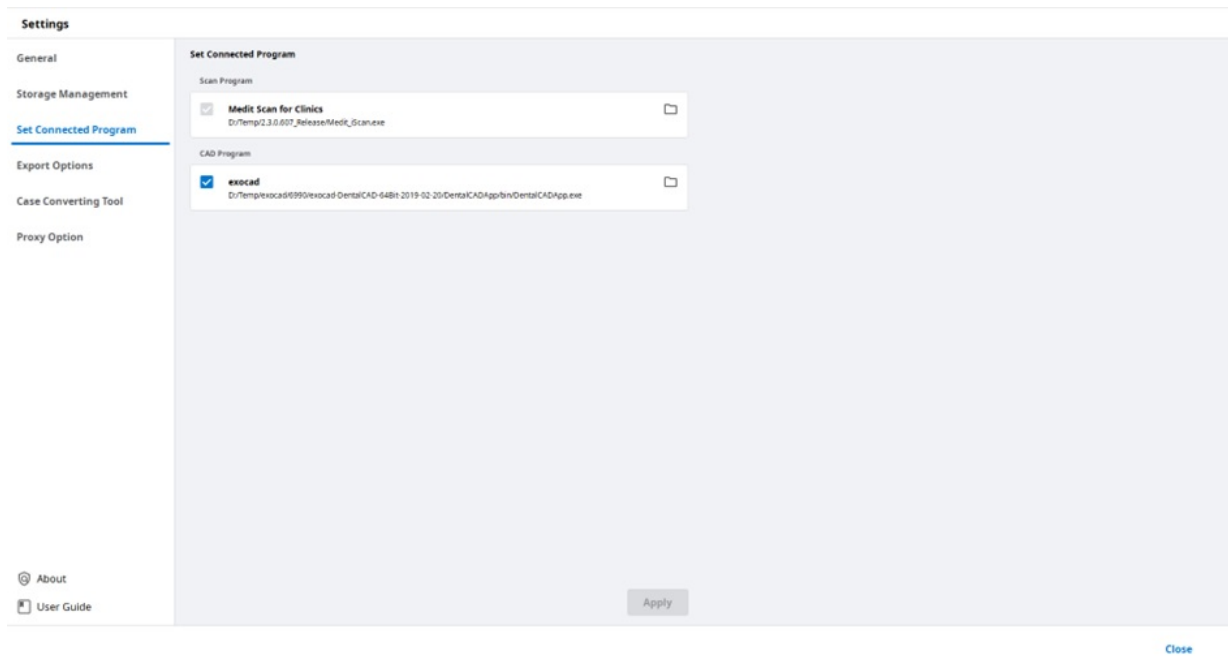

Não é possível conectar os seguintes programas:

	Conta de clínica	Conta de laboratório
Programa de escaneamento	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Programa CAD	exocad	exocad

⚠️Aviso

A integração dos seguintes serviços não está disponível no Medit Link para Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opções de exportação

Defina como exportar arquivos do Medit Link.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Export Options' tab selected. The left sidebar contains links for General, Storage Management, Set Connected Program, Export Options (active), Case Converting Tool, and Proxy Option. The main area is divided into several sections: 'Export Options' with a dropdown for 'CAD Type' set to 'Maestro' and a text field for 'Export Files To' set to 'C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/'; 'Mesh Format' with checkboxes for 'Convert mesh files to the below formats' (PLY is checked) and 'Do not convert the attached files' (checked); 'Image Format' with a checkbox for 'Convert images to the below format' and radio buttons for 'JPG', 'JPEG', 'PNG' (selected), and 'BMP'; 'Compress & Combine' with checkboxes for 'Compress Files' and 'Combine Individual Mesh'; and 'Options when same folder or file already exists' with radio buttons for 'Always ask when exporting' (selected), 'Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.', and 'Create a folder and export the files'. On the right, there are two sections for naming rules: 'Rule for Folder Name' and 'Rule for File Name', each with buttons for 'Creation Date', 'Scanning Date', 'Order Date', 'Patient Name', 'Case Name' (selected), 'Partner Name', 'Patient ID', and 'Order ID', followed by text input fields for 'Folder Name' and 'File Name'. An 'Apply' button is at the bottom right, and a 'Close' button is at the bottom center.

Tipo do CAD	Selecione o programa CAD que deseja usar para projetar. O programa ajustará os resultados com base na sua seleção, permitindo que você prossiga com o projeto sem nenhum alinhamento de eixo adicional.
Exportar arquivo para	Especifique o caminho onde deseja armazenar os resultados.
Formato de malha	Especifique o formato do arquivo de malha final.
Formato da imagem	Especifique o formato dos arquivos de imagem exportados.
Comprimir e combinar	Comprime todos os resultados em um único arquivo. Combinar malha individual: Combine todos os resultados para maxila ou mandíbula em um arquivo. Ao usar alguns programas que não podem importar e trabalhar com vários arquivos, você pode mesclá-los em um para trabalhar neles.
Opções quando a mesma pasta ou arquivo já existem.	Escolha a ação padrão para casos em que a mesma pasta ou nome de arquivo existe no caminho alvo. • Perguntar sempre ao exportar. • Exportar um novo arquivo e substituir os arquivos existentes. O arquivo atualmente armazenado será perdido. • Criar uma pasta e exportar os arquivos.

Regra para nome das pastas	Defina regras para criar um nome de pasta ao exportar arquivos. As regras definidas serão aplicadas à nomenclatura das pastas, e o arquivo exportado será salvo na pasta criada. As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra. - Conta de clínica Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido - Conta de laboratório Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido
Regra para nome dos arquivos	Defina regras para o nome do arquivo exportado. As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra. - Conta de clínica Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido - Conta de laboratório Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido

Ferramenta de conversão de casos

Move casos entre contas.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 반송완료리스트2	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55


Close

Como usar a Ferramenta de conversão de casos

1. Abra o Medit Link e clique em "Configurações".

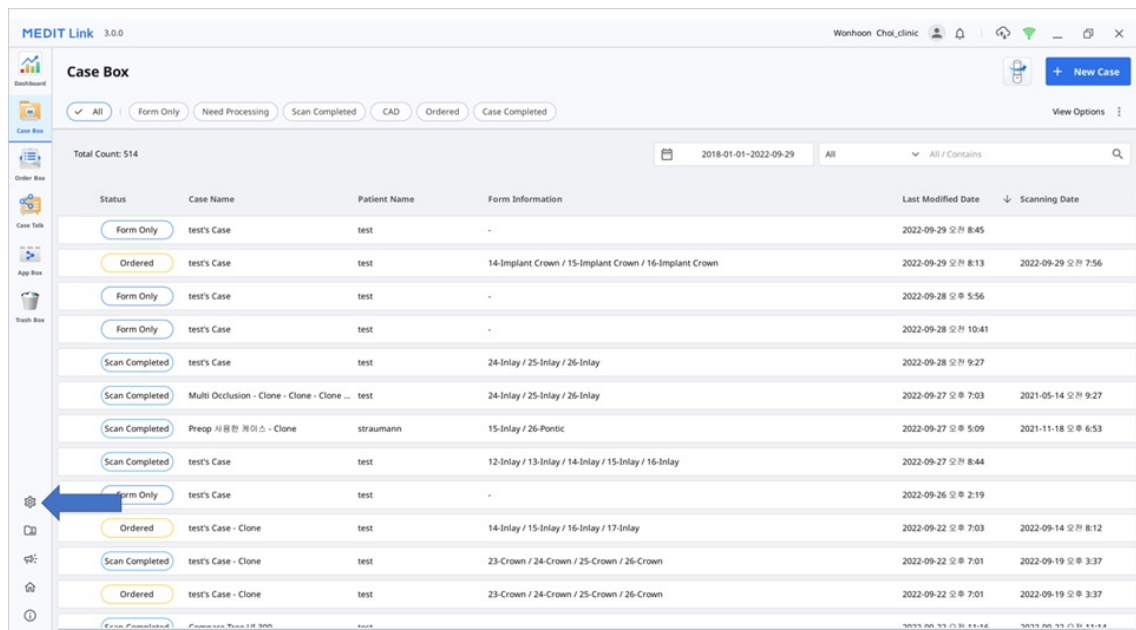


2. Escolha a seção "Ferramenta de conversão de casos" no menu esquerdo.

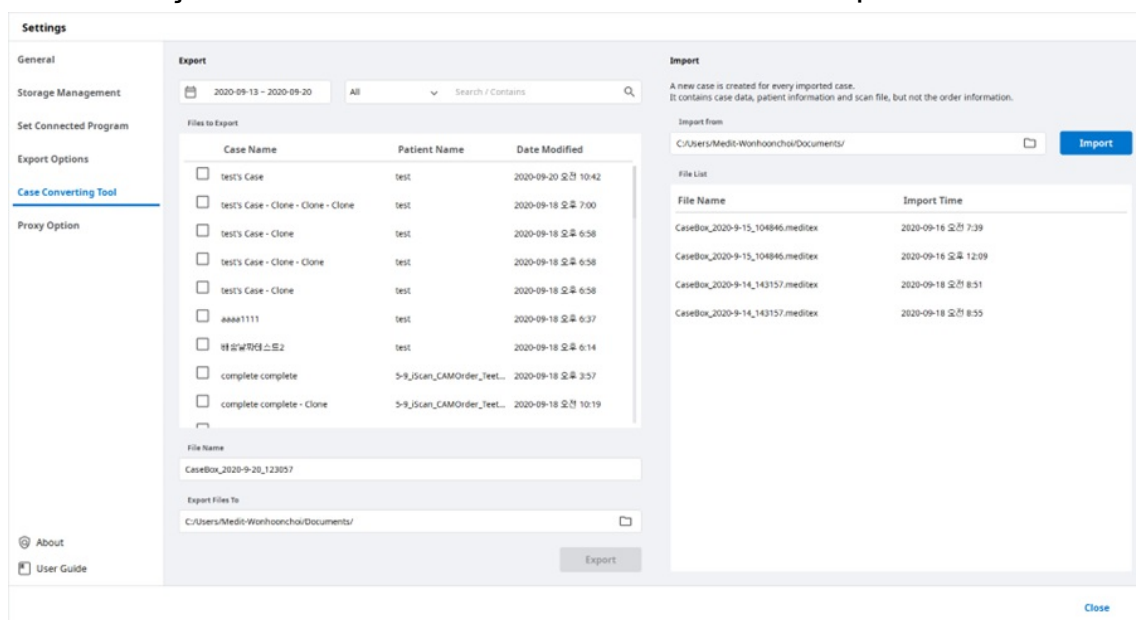

3. Na seção de importação, clique no ícone da pasta para procurar no seu PC o arquivo .meditex que deseja importar.


4. Clique no botão "Importar" e verifique o arquivo importado na lista de arquivos abaixo.

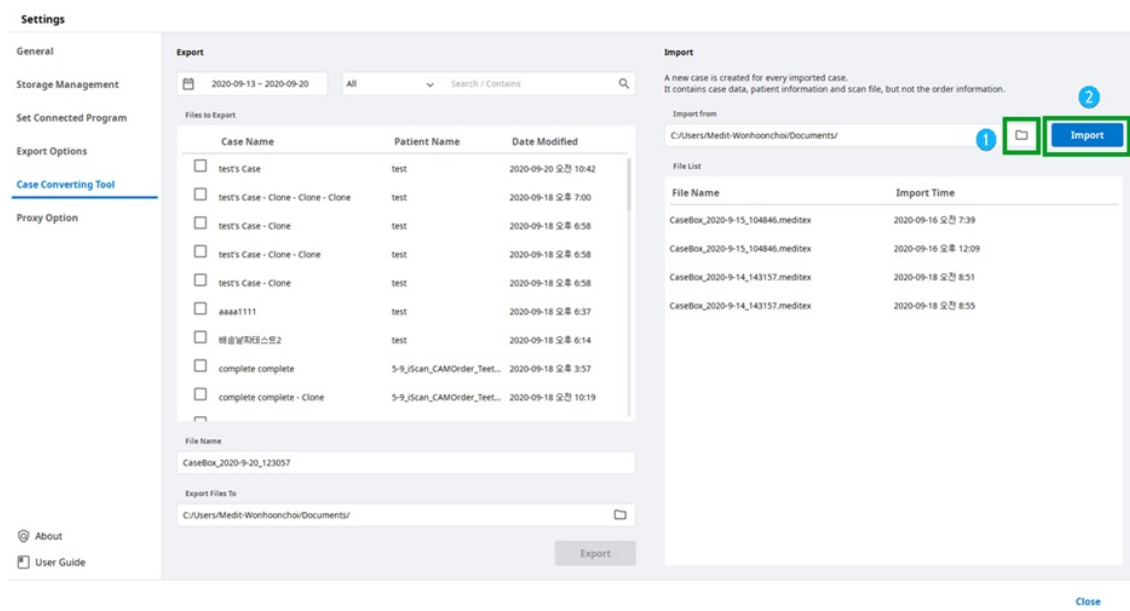

- O caso importado aparecerá também na sua Case Box (conta de clínica) ou Work Box (conta de laboratório).


Opções de proxy

Em alguns ambientes de rede limitados, você pode alterar as configurações de rede.

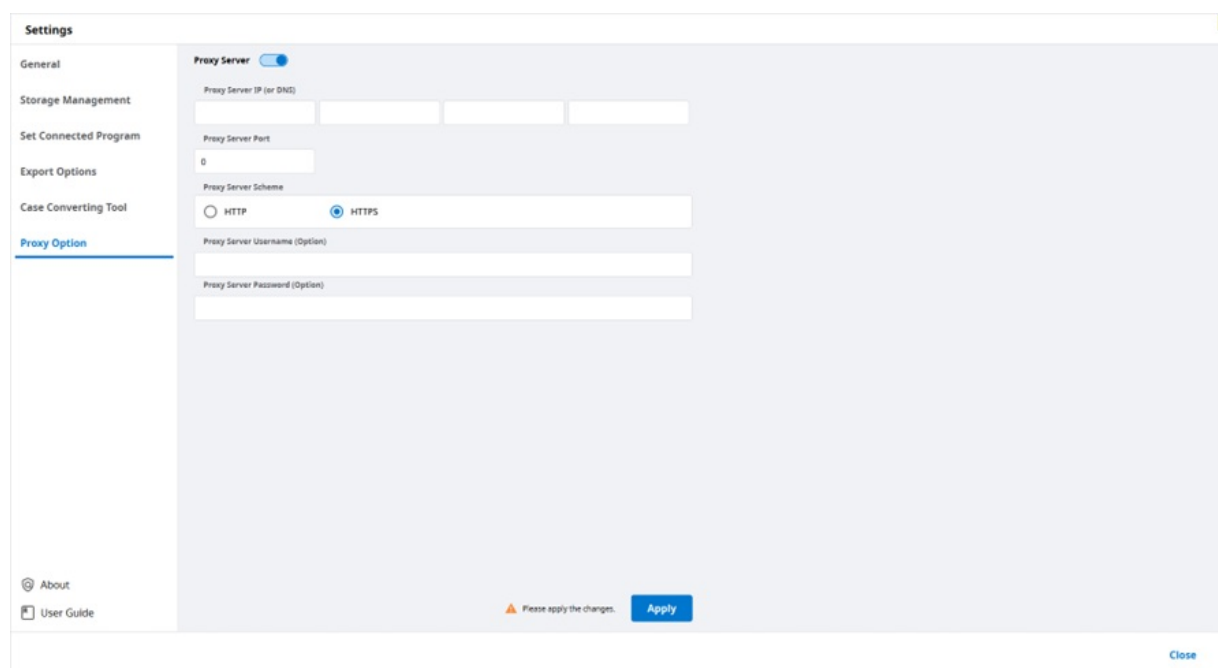

Sobre

Exibe informações detalhadas sobre o Medit Link.

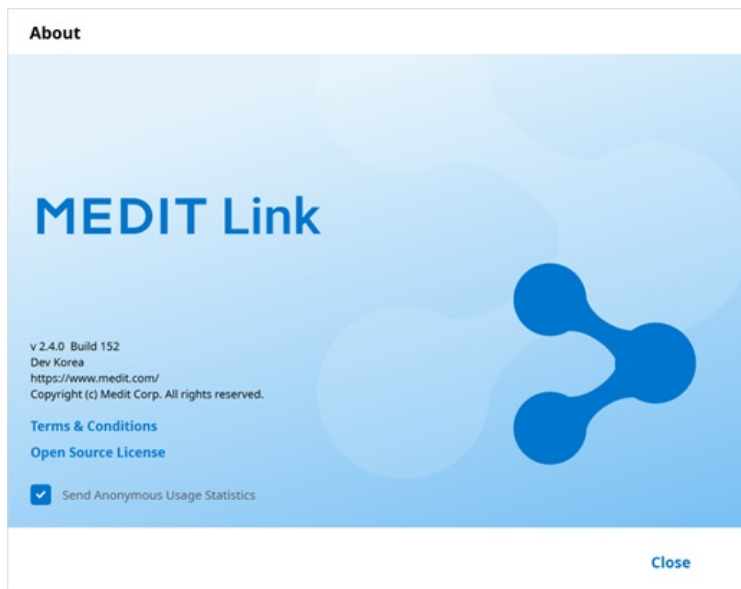

Guia do usuário

Mostra o Guia do usuário do Medit Link.

Para abrir o guia do usuário, é preciso uma conexão com a Internet.

Visualizador de arquivos

O Visualizador de arquivos agrupa e mostra vários dados, incluindo os adquiridos de programas vinculados ao Medit Link e aqueles anexados pelos usuários.


Ele fornece funções básicas de gerenciamento, como exibir/ocultar dados, ajustar a opacidade e excluir dados.

Ele suporta pré-visualizações de arquivos nos seguintes formatos:

- Dados 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagens 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Arquivos de vídeo: MKV, MP4, AVI, WMV

Árvore de dados

Você pode agrupar e exibir todos os dados do caso na árvore de dados. Também é possível exibir/ocultar dados, ajustar a transparência e excluir dados da árvore de dados.

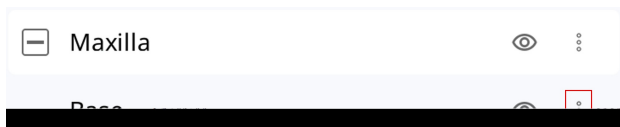	Exibir/Ocultar	É possível exibir ou ocultar os dados.
	Opacidade	A barra deslizante aparece quando você clica em um dos dados na árvore de dados. Você pode ajustar a opacidade dos dados exibidos movendo a barra deslizante. 
	Mais	Clicar no ícone Mais mostra os recursos adicionais disponíveis.  • Exibir somente este: Oculta todos os outros dados e exibir apenas os dados correspondentes. • Ocultar: Oculta os dados. • Duplicar: Copia os dados e os adiciona ao grupo de anexos. • Exportar: Exporta os arquivos selecionados. • Mudar o nome: Altera o nome dos dados. • Excluir: Exclui os dados.





ⓘAviso

Você pode mudar o nome dos dados quando está online.

Ferramentas de controle de modelo

Controle de modelo 3D

	Panorâmico	Move o modelo.
---	------------	----------------

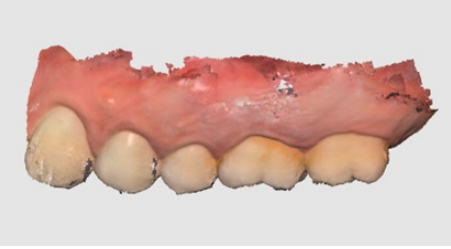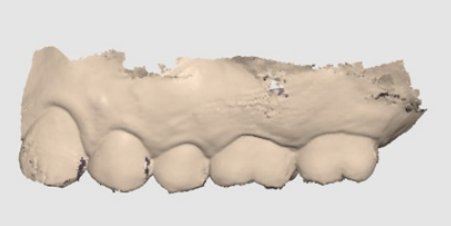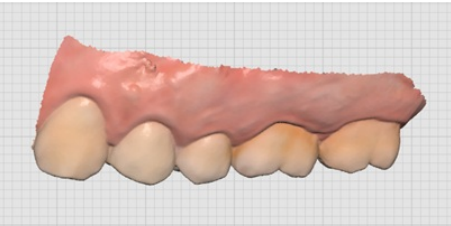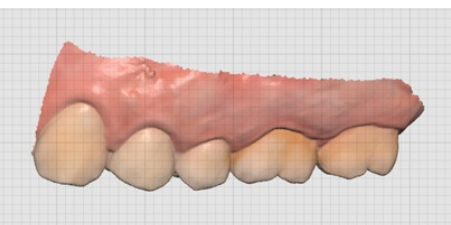	Rotacionar	Rotaciona o modelo.
	Aumentar/Diminuir zoom	Aumenta ou diminui o zoom do modelo.
	Ajustar zoom	Posiciona o modelo no centro da tela.
	Modo de exibição do modelo	Ativar textura
		Exibe os dados em cores de textura reais. 
	Modo de exibição do modelo	Desativar textura
		Exibe os dados em cor única. 
	Configurações da grade (mm)	Ativar grade
		Mostra a grade no fundo. 
		Ativar overlay
		Aplica overlay da grade sobre o modelo. 
		Desativar grade
		Oculto a grade.

Controle de imagem 2D


	Próxima imagem/Imagem anterior	Movimenta entre imagens.
	Editar	Edita a imagem.
	Pinçar/Colar janela	Você pode destacar a janela de imagem e ajustá-la na posição desejada. Você pode redimensionar a janela. Quando a janela é restaurada ao seu local original, ela retorna ao seu tamanho padrão.

Ferramentas de função

Captura de imagens e nota


Capture a tela atual como imagem 2D, desenhe nela ou adicione avisos.

Você pode salvá-la como um arquivo com seus avisos e enviá-la como referência.

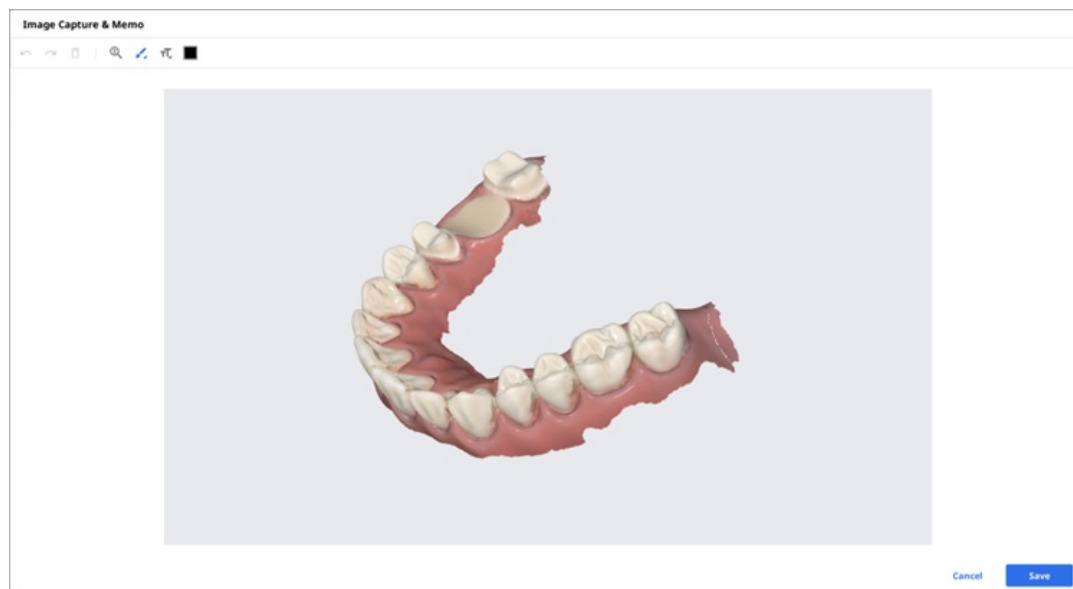

Captura de ortodontia


Capture as imagens na direção de visualização atual e superior/inferior/esquerda/direita a partir da direção de visualização atual.

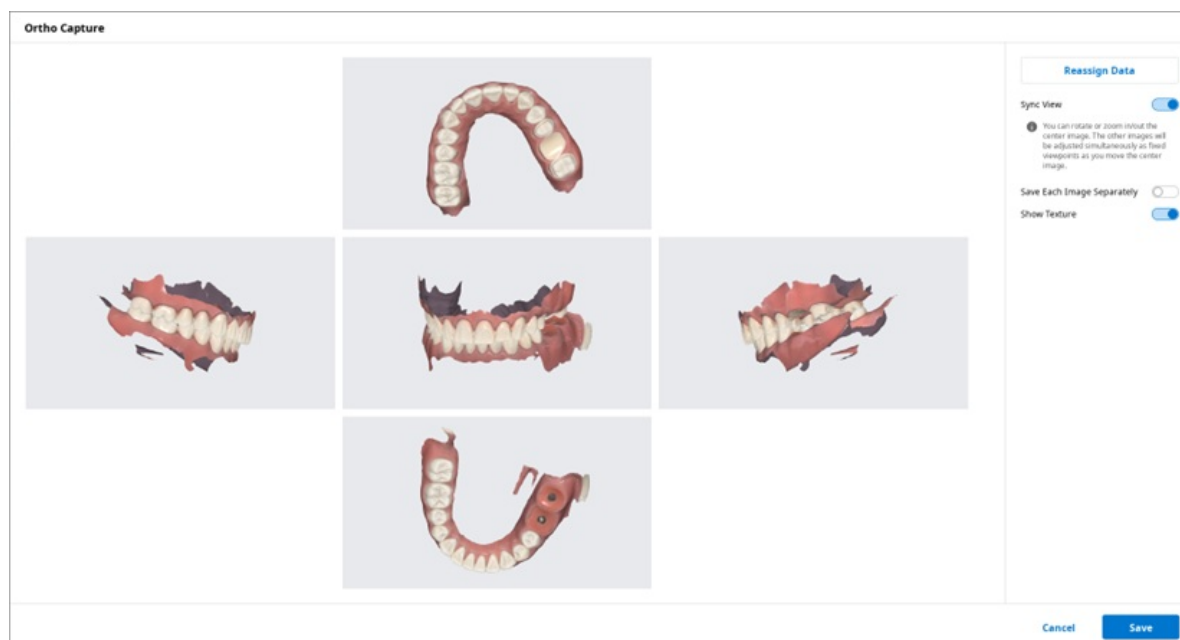

Sincronizar visualização


Quando ativada, você pode girar ou ampliar/diminuir o zoom da imagem central. As outras imagens serão ajustadas simultaneamente como pontos de vista fixos conforme você move a imagem central.

Quando desativada, você pode usar uma imagem panorâmica, rotacionar ou aumentar/diminuir o zoom de todas as imagens individualmente.

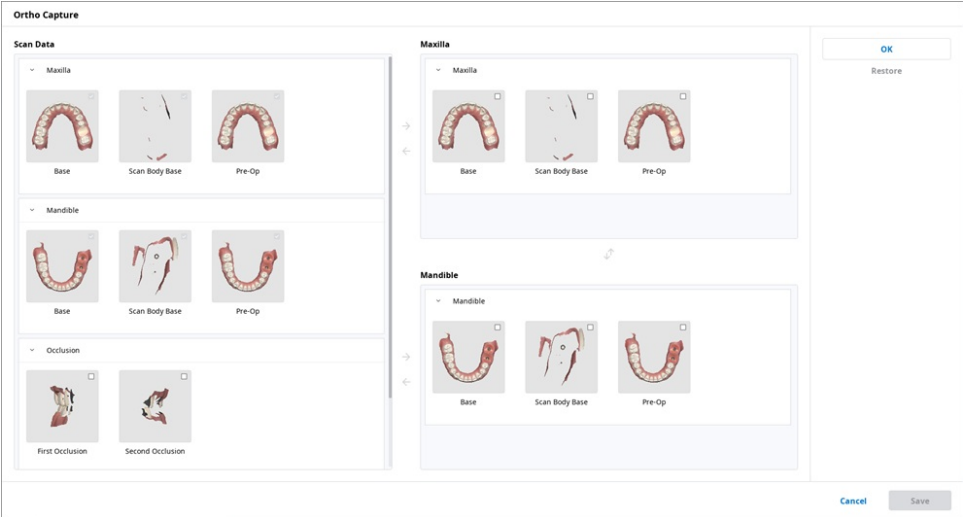Salvar cada imagem separadamente	Salve cada imagem com alta resolução.
Exibir textura	Ativa/desativa a textura do modelo.
Reatribuir os dados	Altere os dados de maxila/mandíbula com a funcionalidade Reatribuir os dados. Você pode usar os dados alterados para criar e utilizar as imagens resultantes de Captura de ortodontia.  • Escanear dados: Todos os dados de escaneamento do caso são exibidos. • Maxila: Os dados que você selecionou para a maxila são exibidos. • Mandíbula: Os dados que você selecionou para a mandíbula são exibidos.


Preencher buracos

Preencha buracos em dados de malha 3D.

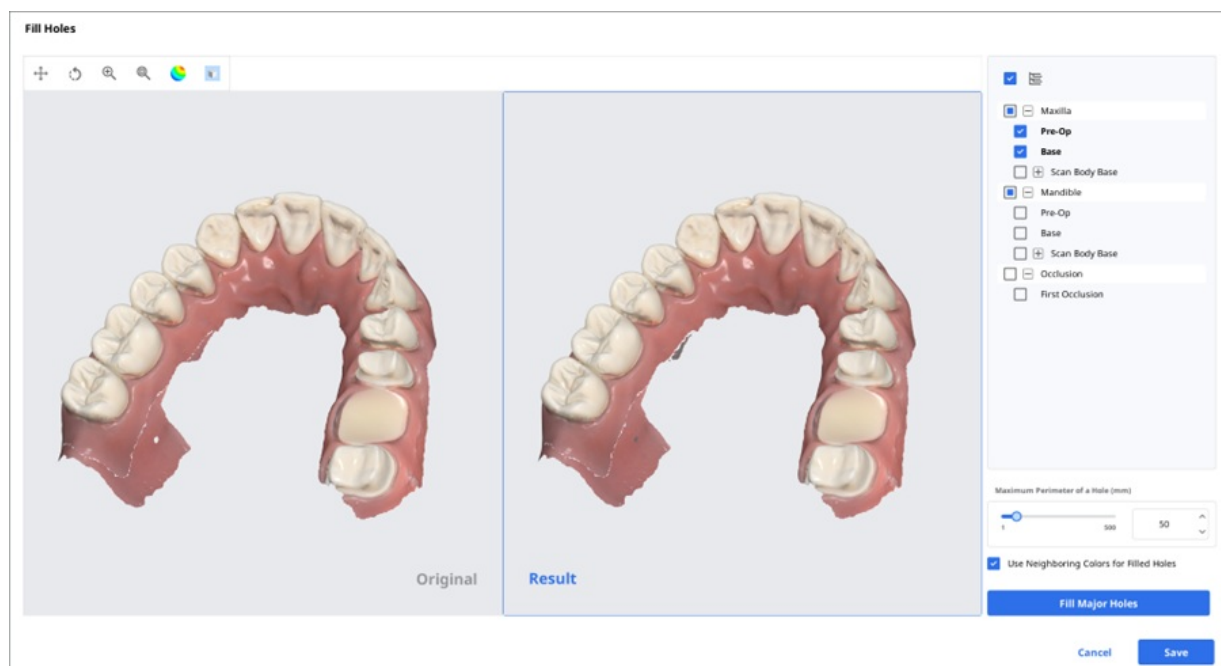

Recorte


O Recorte fornece várias ferramentas para editar dados.

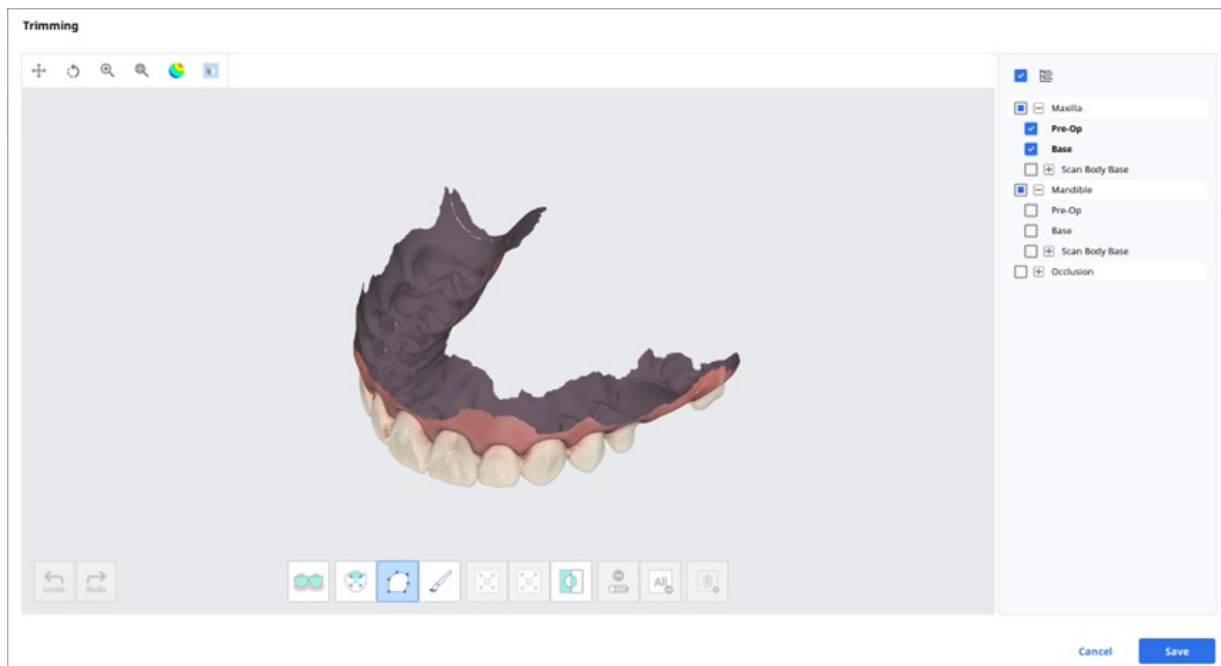

Os dados de malha 3D selecionados podem ser editados utilizando diferentes ferramentas localizadas no canto inferior da janela.

Seleção		Seleção inteligente dos dentes	Seleciona automaticamente todos os dentes da arcada, removendo as partes da gengiva. ⓘAviso Esta funcionalidade está disponível apenas para os dados escaneados que foram adquiridos pelo Medit Scan for Clinics com a opção "Usar GPU" ativada.
		Seleção inteligente do dente	Seleciona automaticamente a área de um único dente, removendo as partes da gengiva. Clique, pressione e arraste o mouse sobre o dente.
		Seleção de polilinhas	Seleciona todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela.
		Seleção em pincel	Seleciona todas as entidades na tela em um caminho desenhado à mão. Apenas a vista frontal será selecionada. O pincel vem em três tamanhos.
Ajuste da área selecionada		Encolher a área selecionada	Reduz a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.
		Expandir a área selecionada	Expande a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.
		Inverter a área selecionada	Inverte a seleção.
Cancelamento de seleção		Seleção/Cancelamento de seleção	Quando ativa, cancela a seleção da área utilizando várias ferramentas.
		Limpar toda a seleção	Limpa todas as áreas selecionadas.
		Excluir a área selecionada	Exclui os dados da área selecionada.


1. Selecione a área que deseja recortar com as ferramentas de seleção de área.

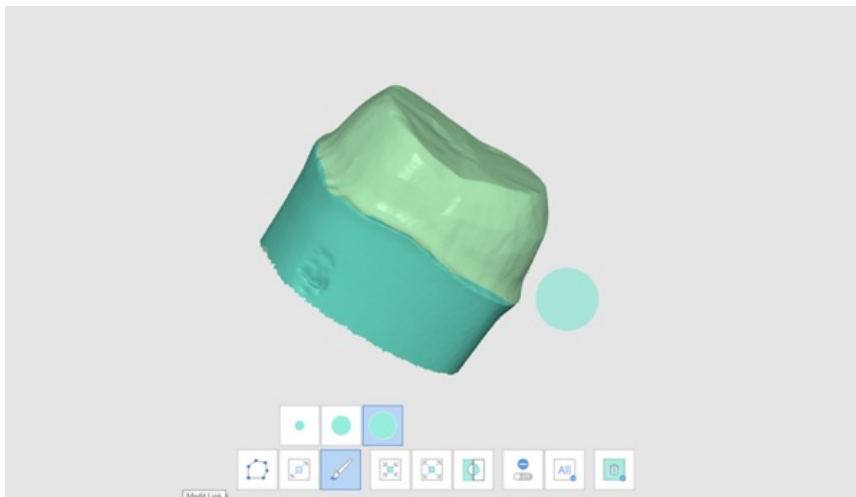


2. **Aviso**

A ferramenta de recorte de Polilinha seleciona todas as entidades com um formato de polilinha desenhado na tela, enquanto a ferramenta de recorte de Pincel seleciona apenas os dados faciais frontais.


3. É possível inverter, encolher ou expandir a seleção com as três ferramentas a seguir.
 - Inverter a área selecionada

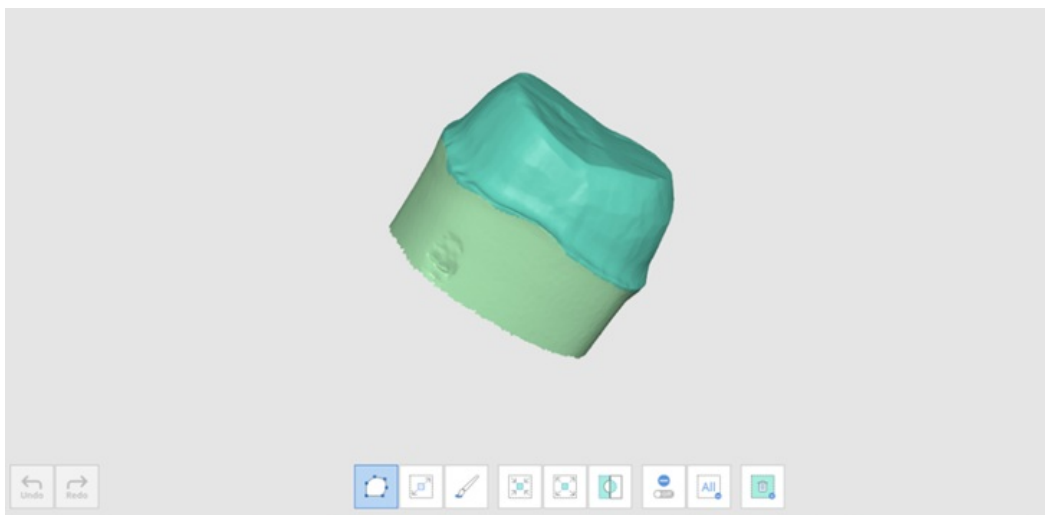

- Encolher a área selecionada

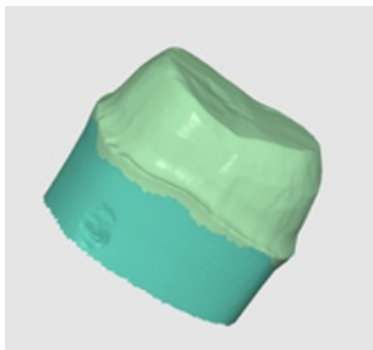


- Expandir a área selecionada

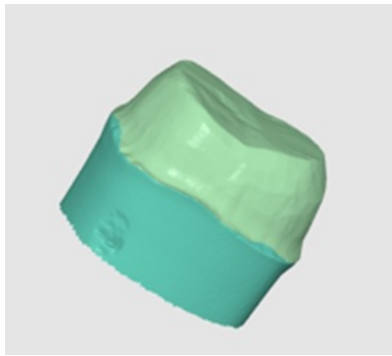

4. Você pode cancelar a seleção das áreas selecionadas com a ferramenta Excluir a área selecionada.




Otimizar alinhamento da oclusão

Otimize o alinhamento da oclusão. Você pode escolher os dados-alvo e ajustar o alinhamento da oclusão.

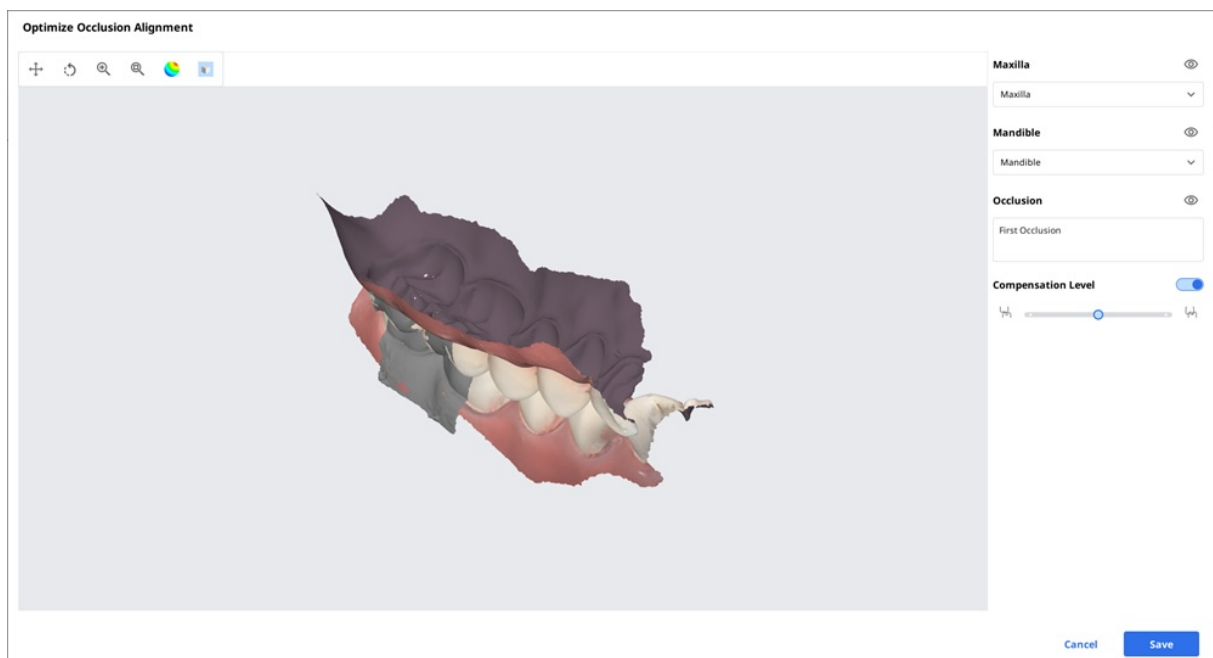


Nível de compensação

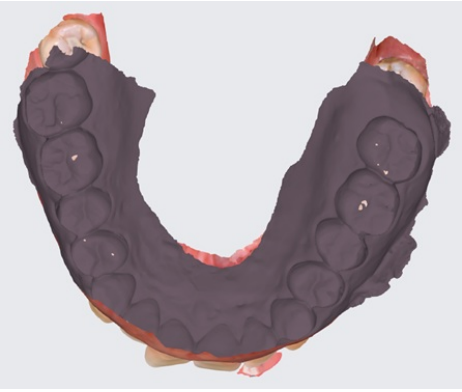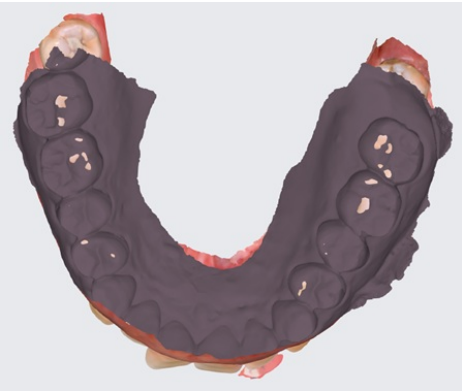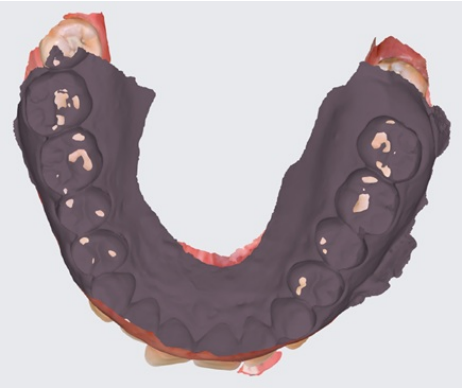

Médio	Compensation Level	
Alto	Compensation Level	
Desligado	Compensation Level	

Movimento mandibular

Você pode reproduzir os movimentos mandibulares gravados no Medit Scan for Clinics para ver os contatos de oclusão dinâmicos entre as dentições superior e inferior.

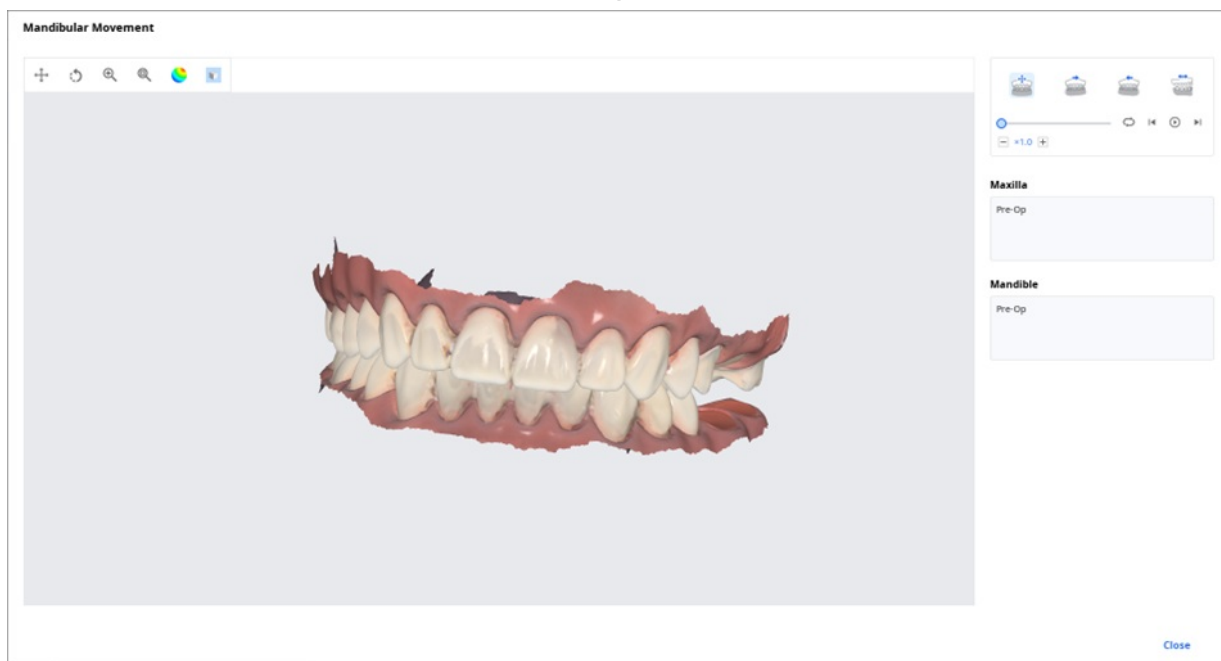

	Movimento livre	Reproduz a gravação do movimento mandibular livre.
	Movimento lateral esquerdo	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a esquerda.
	Movimento lateral direito	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a direita.
	Movimento protrusivo	Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a frente.

Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos

Você pode obter vários resultados de dados de oclusão do aplicativo Medit Scan.

O Medit Link fornece a função de gerenciar os resultados por meio do "Visualizador de arquivos".

Como gerenciar vários resultados


Quando o usuário obtém vários resultados de oclusão do Medit Scan for Clinics, o Medit Link oferece a opção de selecionar um resultado.

A lista de resultados é ordenada por nome e você pode selecionar um item.

O modelo selecionado será exibido na "Árvore de dados" e na "Área de exibição do modelo".



Você pode recolher a lista e alterar o item usando os ícones de seta.

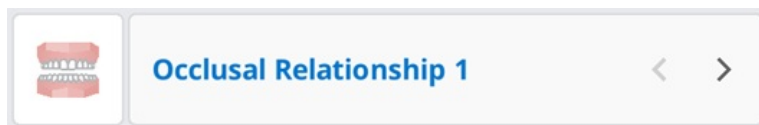

Visualizar opções

Você pode alterar as Opções de visualização para personalizar os layouts da lista de casos na Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtros do estado

Exibe ou oculta cada filtro que representa o estado do caso. Os filtros com estado oculto não são exibidos na tela da Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Fica fácil encontrar o caso que você precisa com os filtros exibidos.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

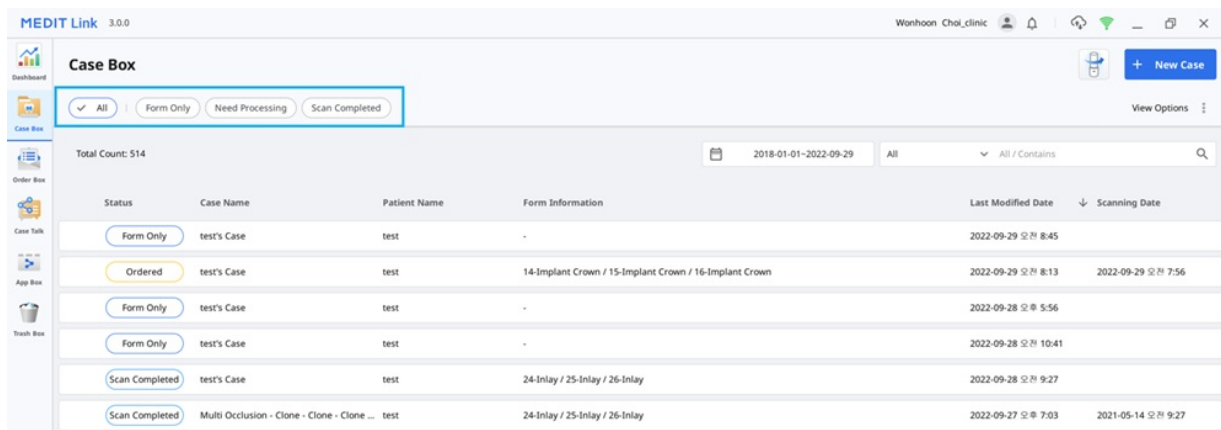

- Você pode clicar no estado que deseja visualizar para exibir apenas os casos nesse estado.
- É possível selecionar vários estados ao mesmo tempo.

Opções de filtragem disponíveis para cada caixa:

Case Box	Todos/Apenas formulário/Necessita de processamento/Escaneamento concluído/CAD/Pedido/Caso concluído
Order Box	Todos/Pendente/Cancelado/Rejeitado/Aceito/Enviado/Caso concluído
In Box	Todos/Pendente/Cancelado/Rejeitado/Aceito/Pronto/Enviado/Caso concluído
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Não suportado

Itens da tabela

Selecione os itens a exibir na lista de casos na Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Você pode alterar a ordem dos itens da tabela ou ajustar a largura da coluna da tabela na visualização em lista para otimizar o ambiente do usuário.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- :: Status
- :: Case Name
- :: Patient Name
- :: Form Information
- :: Last Modified Date
- :: Scanning Date

Hidden

Show All

- :: Birth Date
- :: Order Date
- :: Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed
 View Options

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Tipo de visualização

Altere o tipo de visualização de Visualização em galeria para Visualização em lista, e vice-versa, na Case Box.

Visualização em galeria

MEDIT Link 3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

Total Count: 644

2018-01-01-2022-10-28

All / Contains

+ New Case

View Options

test's Case

test

No Registered Form

2022-10-27 오전 8:59

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-26 오후 10:24

Scan Completed

Preop 사용한 케이스

straumann

Inlay 15

Pontic 26

2022-10-26 오후 7:44

Ordered

test's Case

test

Inlay 28

Crown 16

Custom Abutment + 21, 22, 23, 24, 25, 26

2022-10-26 오후 7:43

Scan Completed

주문테스트 1 - Clone

test

Inlay 16, 15, 14, 23, 24, 2...

2022-10-26 오후 12:15

Ordered

TreeTest20221026

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-26 오전 8:51

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-25 오전 9:04

Ordered

R2.4.0_TAK_Medit Scan for Clinics_Basic_with ...

2.4.0 Data_TAK

Inlay 46

Crown 25, 27

Implant Crown 16, 36

2More

2022-10-24 오후 3:18

Scan Completed

temporaries

temporaries - Clone - Clone - Clone

주문테스트 1 - Clone - Clone

test's Case

Medit Link2.3.0 Release

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

Implant Crown Zirconia 11, 12, 13, 14,...

Inlay Zirconia 3, 4, 5, 6, 7

Crown Metal 18, 19, 20, 21,...

1

2020-09-14 오전 7:43

Scan Completed

1	Nome do caso
2	Nome do paciente e data de nascimento
3	Informações do formulário
4	Data de escaneamento
5	Estado do caso

MEDIT Link 3.0.2
Woonhon Choi_clinic

Case Box

+ New Case

✓ All |
 Form Only |
 Need Processing |
 Scan Completed |
 CAD |
 Ordered |
 Case Completed

View Options ⋮

Total Count: 644		📅 2018-01-01~2022-10-28 All / Contains 🔍				
Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Woonhonchoi-Lab
Scan Completed	케이스해모있고주문해모수정한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파일라스트레스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Selecione uma opção de agrupamento para classificar e reorganizar os casos na lista pela opção selecionada.

- **Status Filters** 3 in use >
- **Table Items** 6 in use >
- **View Type** List View >

☰ **Sorting** Last Modified Date >

Caixa	Agrupamento
Case Box	Nenhum
	Nome do paciente
	Data de escaneamento
	Data do pedido
Order Box	Nenhum
	Data de escaneamento
	Data do pedido

	Data de entrega solicitada
In Box	Nenhum
	Data do pedido
	Data de entrega solicitada
Work Box	Nenhum
	Data de entrega solicitada

ⓘ Aviso

As opções de agrupamento e ordenação não estão disponíveis para a Trash Box e o Case Talk.

Ordenação

Selecione uma opção de ordenação para alterar a ordem dos casos na lista de acordo com a opção selecionada.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Sorting Last Modified Date ▾

☐ Patient Name
☒ Last Modified Date
☐ Scanning Date
☐ Order Date
☐ Lab Name

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de ordenação:

Caixa	Agrupamento	Ordenação
Case Box	Nenhum	Nome do paciente / Modificado em / Data da escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
	Nome do paciente	Modificado em / Data da escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
	Data de escaneamento	Nome do paciente / Modificado em / Data do pedido / Nome do laboratório
	Data do pedido	Nome do paciente / Modificado em / Data da escaneamento / Nome do laboratório
Order Box	Nenhum	Nome do paciente / Data da escaneamento / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório
	Data de escaneamento	Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório

	Data do pedido	Nome do paciente / Data da escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Data da escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório
In Box	Nenhum	Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data do pedido	Nome do paciente / Data da escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Data do pedido / Nome da clínica
Work Box	Nenhum	Nome do paciente / Modificado em / Data de entrega solicitada / Nome da clínica
	Data de entrega solicitada	Nome do paciente / Modificado em / Nome da clínica

ⓘAviso

As opções de agrupamento e ordenação não estão disponíveis para a Trash Box e o Case Talk.

Filtragem e pesquisa

Filtrar por data

Filtre e exiba casos modificados pela última vez dentro da duração definida.

1. Clique no filtro de duração.



2. Selecione a duração na lista.

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados pela última vez dentro desse período.
- Hoje: Exibe os casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe os casos modificados pela última vez durante este mês.
- Mês anterior: Exibe os casos modificados pela última vez no último mês.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

Recursos avançados de pesquisa

Aproveite os recursos de pesquisa para encontrar rapidamente as informações que deseja.

Os seguintes Critérios de pesquisa estão disponíveis para cada caixa:

Case Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Informações do formulário, Nome do laboratório
Order Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório, ID do pedido
In Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido
Work Box	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Informações do formulário, Nome da clínica, ID do pedido
Case Talk	Nome do Case Talk (Contém), Nome do paciente (Igual a)

Trash Box (Clinic)	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome do laboratório, Excluído por
Trash Box (Lab)	Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, Excluído por

É possível selecionar os Critérios de pesquisa e a lógica Contém ou Igual a.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

Criar/Editar/Clonar/Excluir caso

Criar casos

Criar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

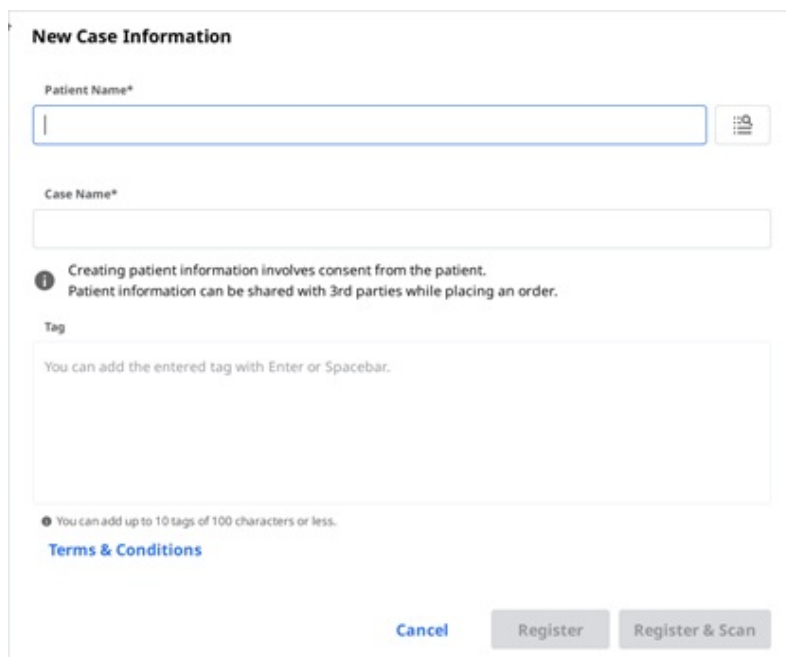


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a small icon to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Informational text**: A message stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field with a placeholder "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a link for "Terms & Conditions" and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. Insira informações básicas, como o nome do paciente e o nome do caso.
 - Se você inserir um nome que não esteja na lista de pacientes, um novo paciente será adicionado.
 - Se você inserir um nome que está na lista de pacientes, poderá selecioná-lo nela.
 - Se registrar um caso para um paciente existente, clique no ícone Lista de pacientes para selecionar um paciente existente.



- Na caixa de diálogo Lista de pacientes, você pode registrar um novo paciente ou editar as informações de um paciente existente.

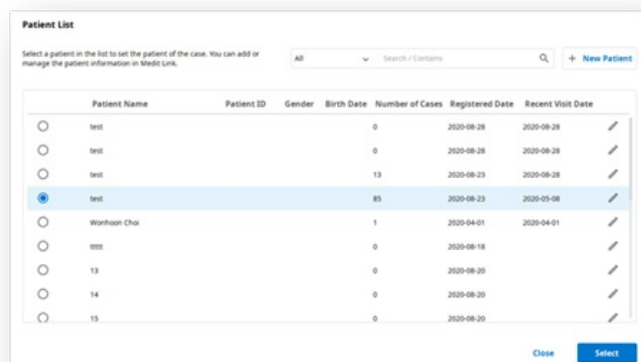

The "Patient List" dialog box displays a table of existing patients. At the top, there is a search bar and a "+ New Patient" button. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. Each row includes a radio button for selection and an edit icon.

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date
☐ test				0	2020-09-28	2020-09-28
☐ test				0	2020-09-28	2020-09-28
☐ test				13	2020-09-23	2020-09-28
☒ test				85	2020-09-23	2020-05-08
☐ Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01
☐ test				0	2020-09-18	
☐ 13				0	2020-09-20	
☐ 14				0	2020-09-20	
☐ 15				0	2020-09-20	

3. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.
4. Clique em "Registrar e escanear" para concluir o registro do caso e proceder com o escaneamento.

- **Registrar:** Você será redirecionado para a página principal. Isso é útil ao registrar vários casos.
- **Registrar e escanear:** Acesse a guia Formulário para registrar as informações do formulário do caso.

Criar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Insira ou selecione o nome da clínica.
3. Insira o nome do paciente e o nome do caso. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.
4. Informe a data de entrega estimada considerando a data de conclusão do trabalho.
5. Após registrar o caso, você será redirecionado para a página principal.

Editar casos

Editar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel **Apply**

2. Clique no ícone "Pesquisar" para alterar o nome do paciente. Observe que ele não pode ser editado diretamente. Em vez disso, você pode encontrar um nome de paciente pelo qual gostaria de substituir o atual e editar as informações do paciente na lista.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close **Select**

3. Verifique o nome do paciente pelo qual você gostaria de substituir o atual.
4. Para criar um paciente, pressione o botão "Novo paciente".
5. Use o botão "Editar" para alterar as informações registradas sobre o paciente.
6. Clique em "Aplicar" para terminar o processo.

Editar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clique em "Aplica" depois de concluir a edição.

ⓘ Aviso

Você não pode editar as informações dos casos recebidos por meio do pedido na In Box.

Clonar casos

Clonar caso na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Será perguntado o tipo de informação que você gostaria de clonar para o novo caso.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Escolha se deseja replicar apenas as informações do formulário ou todos os dados.
4. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".

Clonar caso na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Duplique todos os dados para criar um caso.
3. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".


Excluir caso

Excluir caso (Clínica e Laboratório)

1. Clique no ícone "Excluir".



2. Clique em "OK" para excluir o caso.

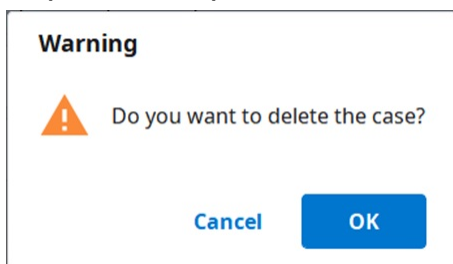

3. Os casos excluídos são movidos para a Trash Box e podem ser recuperados, se necessário.

Informações do formulário

Você pode inserir as informações do formulário com base no programa conectado e no tipo de tratamento.

As informações inseridas serão usadas como informações básicas para trabalhar em programas de escaneamento ou CAD e ao fazer pedidos.

Registrar informações do formulário na Case Box

Inserir na guia Formulário

1. Selecione se deseja inserir informações de tratamento por dente ou por arcada.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
3. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

Inserir na guia CAD

1. Selecione uma das seguintes opções que definirão sua estratégia de escaneamento: Dentes/Multi-die Flexível/Multi-Die.
2. Selecione o número do dente/arcada/die.
3. Defina as configurações para opções detalhadas e operações de CAD.
4. Clique em "OK" para salvar as configurações.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
5. Clique em "Salvar" para salvar seu registro

Registrar informações do formulário na Work Box

Inserir na guia Formulário

1. Selecione o programa de escaneamento que deseja usar.
2. Selecione uma das seguintes opções que definirão sua estratégia de escaneamento: Dentes/Multi-die flexível/Multi-Die.
3. Os métodos podem ser diferentes dependendo do programa de escaneamento selecionado.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dentes	☐	☐
Arcada	☐	☐
Multi-die flexível	☒	☐
Muldie	☒	☐

4. Selecione números de dentes, arcada ou die para o processo de escaneamento.

5. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
6. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

Inserir na guia CAD

1. Selecione uma das seguintes opções que definirão sua estratégia de escaneamento: Dentes/Multi-die flexível/Multi-Die.
2. Selecione o número do dente/arcada/die.
3. Defina as configurações para opções detalhadas e operações de CAD.
4. Clique em "OK" para salvar as configurações.
 - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
5. Clique em "Salvar".

Conectar dentes à ponte

Você pode conectar vários dentes em uma ponte quando o mesmo material é aplicado a vários dentes adjacentes. Clique no ícone da ponte ao lado dos dentes selecionados para conectá-los ou desconectá-los.



Definição das opções de escaneamento

Dependendo do programa com o qual você está trabalhando, várias opções de escaneamento são fornecidas.

As opções de escaneamento selecionadas são repassadas para cada programa de escaneamento.

Medit Scan for Labs

Opções gerais

	Dentes adjacentes	Marca os dentes preparados e adjacentes e repassa essa informação para o programa de escaneamento.
	Antagonista	Marca automaticamente o antagonista e repassa a informação para o programa de escaneamento.

	Articulador	Exibe as opções para selecionar o articulador no programa de escaneamento.
	Marcador de movimento	Permite utilizar a estratégia de escaneamento Movimento da mandíbula no programa de escaneamento.

Opções por dente

	Scan body	Permite definir a estratégia para escanear o scan body no programa de escaneamento.
	Escaneamento pré-operatório	Permite definir a estratégia para escanear o modelo pré-operatório no programa de escaneamento.
	Escaneamento do enceramento	Permite definir a estratégia para escanear os enceramentos no programa de escaneamento.

Adicionar aos favoritos

Você pode selecionar rapidamente um produto registrando-o como favorito.

A lista de favoritos registrados é gerenciada como um template e pode ser compartilhada por meio dos recursos de exportação e importação.

Adicionar aos favoritos

1. Selecione o número do dente.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
 - Tipo – Método – Material – Tonalidades podem ser registrados como favoritos mesmo que nem todos estejam selecionados.
3. Clique no ícone de "Estrela".

4. Uma combinação dos parâmetros selecionados, excluindo o número do dente, aparece em sua lista de pesquisa de favoritos.

Gerenciar templates favoritos

Você pode registrar, gerenciar e compartilhar diferentes tipos de templates.

Adicionar	Adiciona um novo template.
Mudar o nome	Muda o nome do template atual.
Excluir	Exclui o template atual.

Exportar	Exporta o template atual para um arquivo.
Importar	Importa um arquivo de template.

Trabalhar em escaneamento/CAD

Processo de escaneamento

Com base nas informações inseridas, prossiga com o escaneamento.

1. Insira/salve as informações do tratamento e selecione as opções de escaneamento necessárias.
2. Clique no botão "Escanear" no canto superior direito da janela.

Processo de CAD

O Medit Link é integrado ao exocad.

CAD	Registrar informações de tratamento	Confirmação das informações de tratamento	Execução direta de CAD	Resultados do CAD importados de volta para o Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. Em Configurações > Definir o programa conectado, você pode vincular o programa CAD de sua escolha a partir da lista.
2. Insira/salve as informações da tarefa e as opções de design na guia CAD.
3. Clique em CAD no canto superior direito da janela.
4. O programa CAD vinculado é executado e os dados são enviados automaticamente.
5. Salve os resultados após executar o CAD.

ⓘAviso

O Medit Link para Mac não oferece suporte à função de vincular ao CAD.

Obter arquivos de resultados

Exportar arquivos de resultados de escaneamento

Além de compartilhar resultados com parceiros por meio de pedidos, o Medit Link permite que você armazene seus resultados no formato de arquivo desejado usando a função de exportação.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export


Exportar arquivo para	Especifica o caminho onde você deseja armazenar os resultados.
Nome da pasta	O sistema cria uma nova pasta e armazena todos os resultados nela. O nome da pasta padrão é definido pela regra de nomenclatura. Mas é possível alterar o nome da pasta diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome da pasta.
Nome do arquivo	Define o nome do arquivo para o resultado. A regra de nomenclatura define o nome de arquivo padrão. Mas é possível alterar o nome do arquivo diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome do arquivo.
Tipo do CAD	Selecione o programa CAD a ser usado como programa de design. O Medit Link ajustará os arquivos com base nessa seleção, permitindo que você prossiga com o design sem nenhum alinhamento de eixo adicional.
Formato de malha	Especifica o formato do arquivo de malha.
Formato da imagem	Especifica o formato dos arquivos de imagem exportados.
Comprimir arquivos	Comprime todos os resultados em um único arquivo.

Combinar malha individual	Combina o resultado de maxila ou mandíbula com o dente individual. Útil quando não é possível importar vários arquivos para um programa.
Exportar todas as relações oclusais	Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode exportar todos esses resultados de uma só vez.
Salvar informações do caso como PDF	Salva as informações do caso como PDF com o resultado.


Exportar arquivos selecionados

O Medit Link fornece a função de exportação no menu expandido do visualizador de arquivos. Usando-a você poderá exportar facilmente os arquivos selecionados.

1. Clique no ícone "Menu" ao lado do grupo de dados ou de uma entidade na árvore de dados do visualizador de arquivos.
2. Depois, clique em "Exportar".

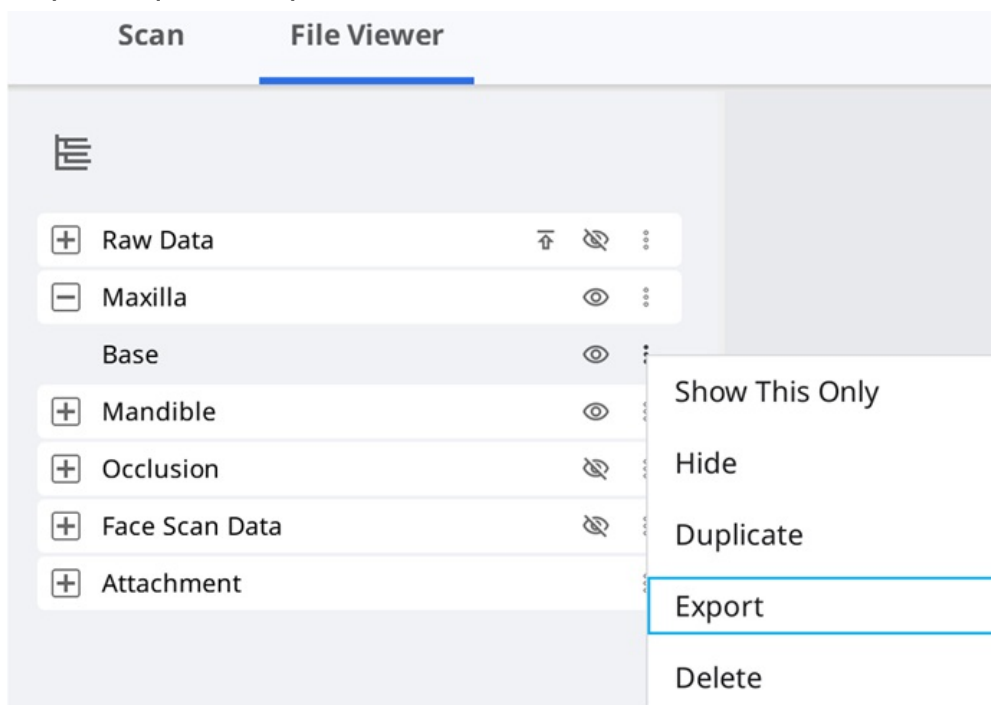

3. A caixa de diálogo de exportação exibe apenas os arquivos selecionados que você deseja exportar.

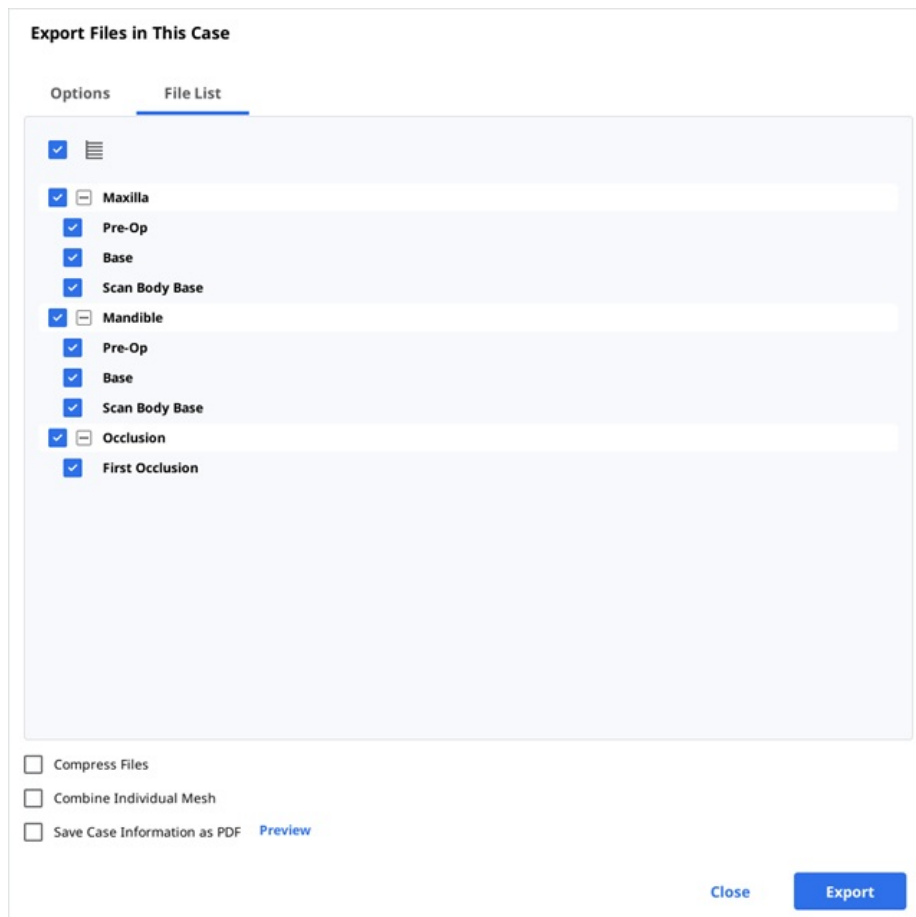

4. Por fim, clique em "Exportar".

Exportar a linha de margem


O Medit Scan for Clinics fornece uma função para criar a linha de margem, e o Medit Link pode transferir a linha de margem para o programa CAD.

Exportar a linha de margem como uma cor

Em geral, o Medit Link converte a linha de margem em cor e exporta o resultado com maxila ou mandíbula juntas. Você pode criar a linha de margem em seu CAD fazendo referência às informações de cores.

Exemplo:



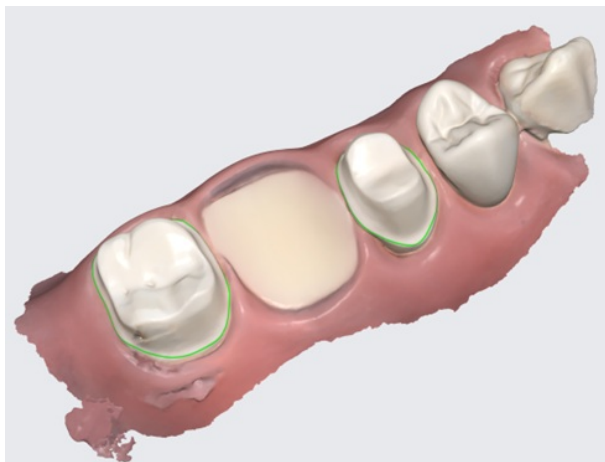

Resultado com a linha de margem como uma cor

ⓘAviso

Essa funcionalidade está disponível para formatos que incluem informações de cores, como meditMesh, OBJ e PLY. A linha de margem não é convertida em STL.

ⓘAviso

Tipo do CAD > 3Shape não oferece suporte a essa funcionalidade.


Exportar a linha de margem como um arquivo

No caso do exocad, o Medit Link exporta a linha de margem para "~margin.xyz" que pode ser importado diretamente para o exocad.

Você pode usar esse arquivo no exocad sem trabalho adicional.

Exemplo:

Maxila	Linha de margem
--------	-----------------

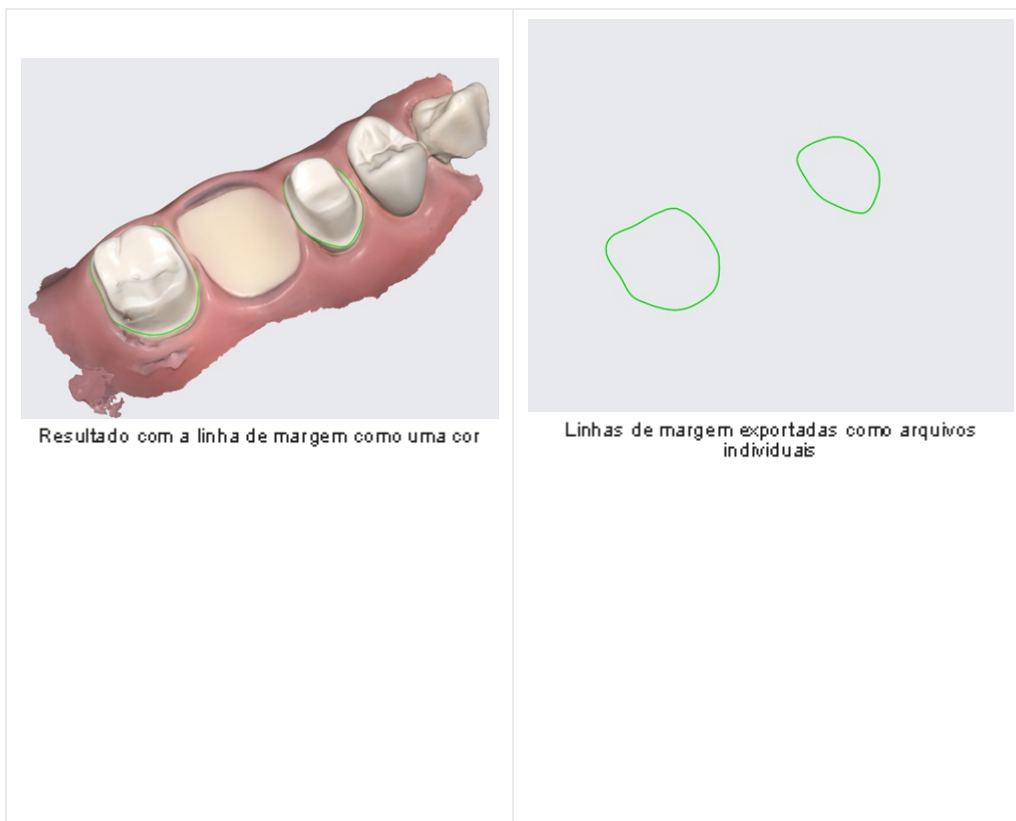

Exportar a lista de casos como CSV

O Medit Link fornece a função para exportar a lista de casos para o formato CSV.

Você pode exportar a lista de casos com informações básicas e gerenciar casos facilmente.

A função "Exportar para CSV" está disponível no menu a seguir do aplicativo Medit Link.

- In Box
- Work Box

Como exportar a lista de casos

1. Acesse In Box ou Work Box.
2. Selecione os casos que deseja exportar.

MEDIT Link 3.0.0

Wonhoon Choi

In Box

✓ All Pending Accepted Case Completed

Cancel Selection Delete Export to CSV Items Selected: 5

2018-01-01 ~ 2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐	Pending test's Case	test	2022-09-29 오전 8:13	2022-10-01 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10413603	
☐	Pending test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10374886	
☐	Pending test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10374864	
☐	Accepted test's Case	test	2022-09-13 오후 2:43	2022-09-15 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10314293	
☒	Pending test's Case	test	2022-09-05 오전 7:31	2022-09-07 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10268220	
☐	Case Completed Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 오전 8:51	2021-07-08 오전 8:50	Wonhoanchai-Clinic	8579990	500 KRW
☒	Case Completed test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 오후 4:10	2021-09-07 오후 4:10	Wonhoanchai-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒	Case Completed test's Case memo	test	2022-04-08 오후 11:...	2022-04-15 오후 7:45	Wonhoanchai-Clinic	9568817	

3. Clique no botão "Menu expandido" na parte superior para selecionar a opção "Exportar para CSV".



4. Defina o caminho e o nome do arquivo e, então, salve os resultados.

Download de arquivos do Medit Link Web

O Medit Link fornece uma função de download.

Se você deseja obter os arquivos de resultados sem instalar o aplicativo Medit Link, pode baixá-los do serviço da web Medit Link.

Aviso


Os dados devem ser transferidos por upload no Medit Cloud para fazer o download dos arquivos da web.

A função de download está disponível no menu a seguir do serviço da web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Você encontra o botão "Download" no canto superior direito.

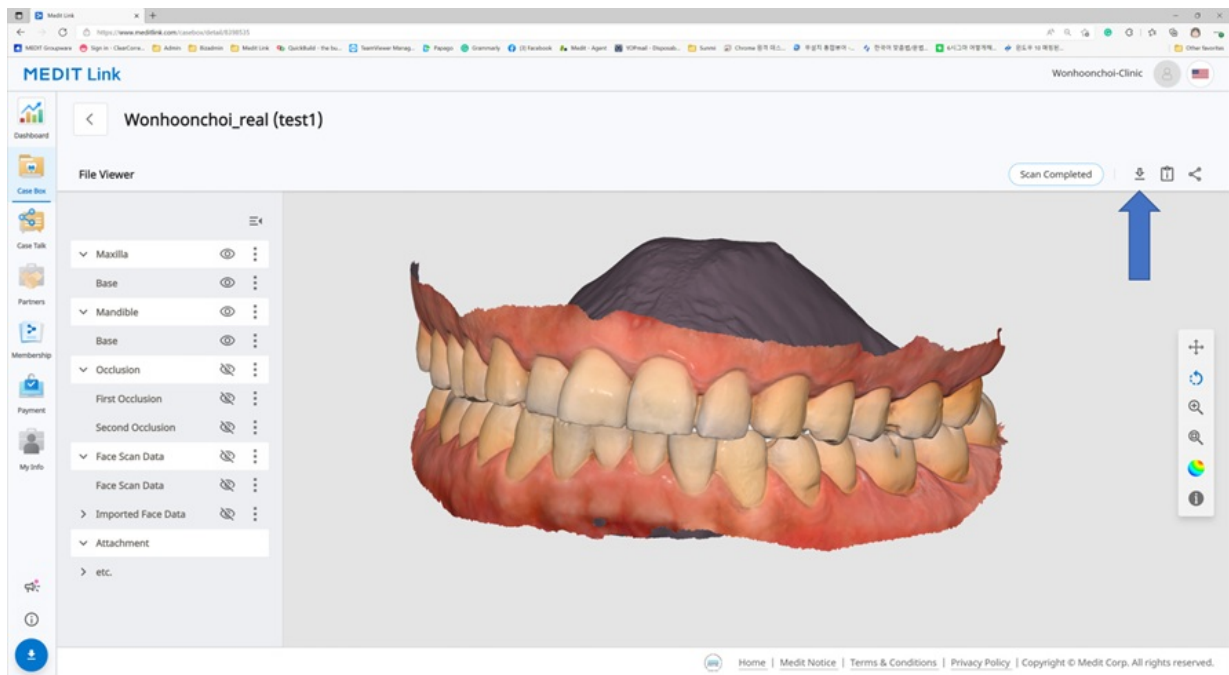

Web Viewer

Ao compartilhar o caso usando o Case Talk, você pode definir se deseja permitir o download ou não.

Se você marcar “Conceder permissão de download” e compartilhar o caso, todos os usuários que se conectarem pelo link compartilhado poderão fazer o download dos arquivos.

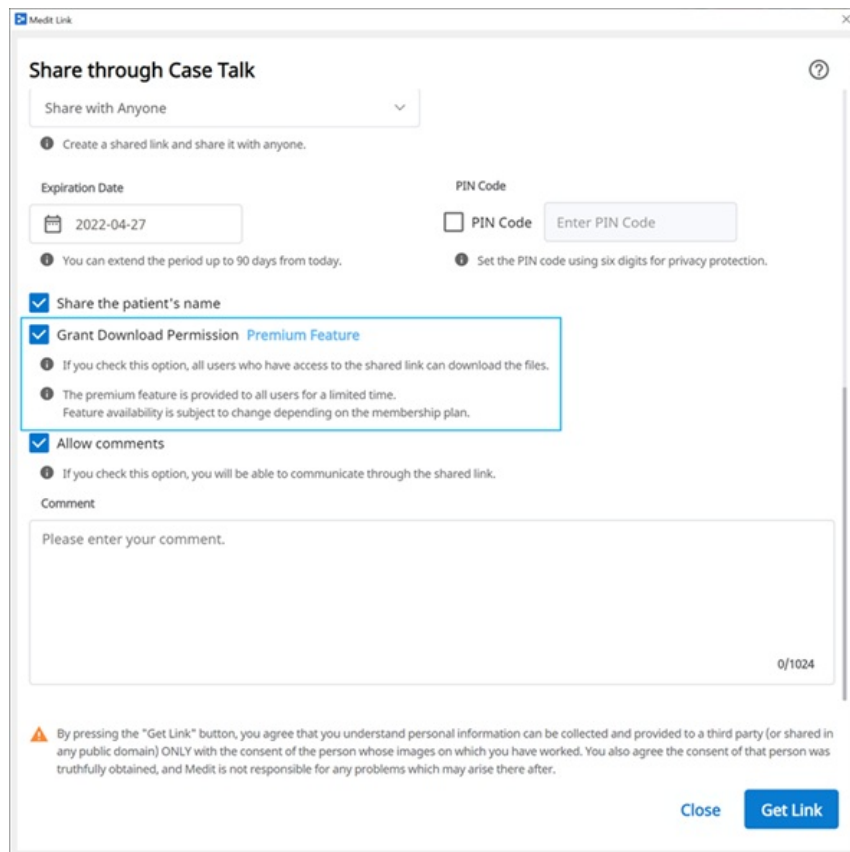

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

No Web Viewer, você encontra o ícone "Download" no canto superior direito.

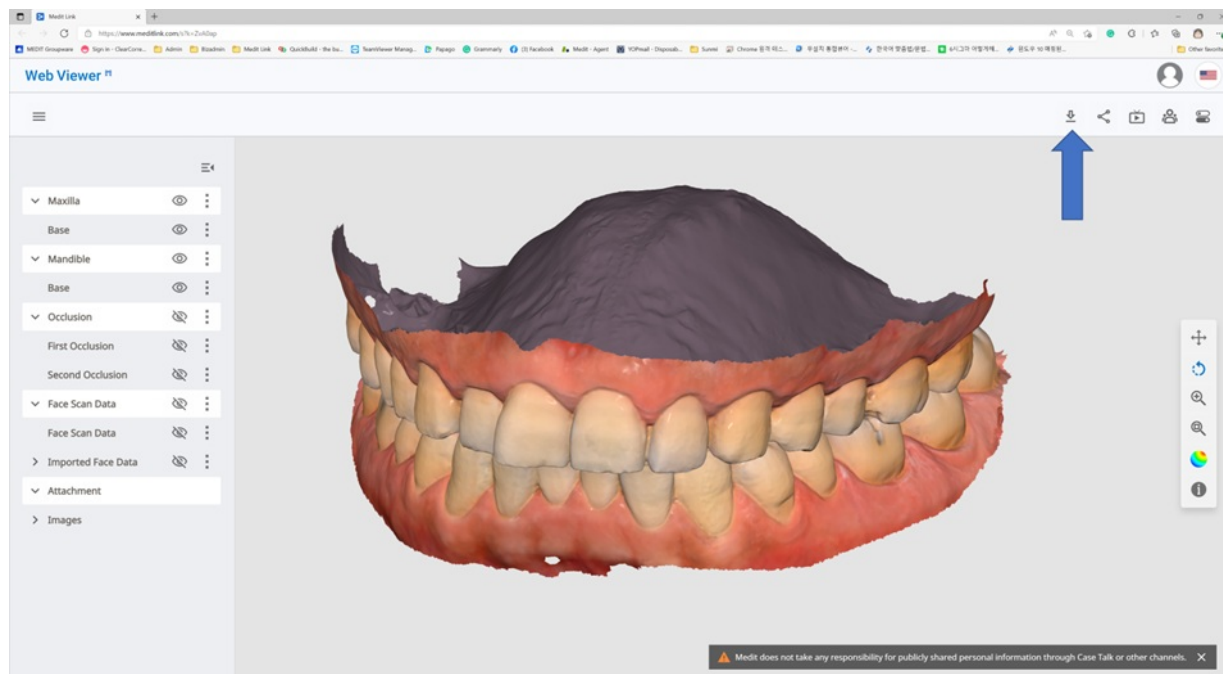

Como fazer o download

1. Clique em "Download".



2. Selecione o formato de malha na caixa de diálogo de download.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Depois, clique em "OK".

Pedir/gerenciar pedidos

Você pode fazer facilmente o pedido de um caso com dados adquiridos de programas conectados e com os dados anexados pelo usuário.

Pedidos de casos

Você pode fazer um pedido para seus parceiros na Case Box.

1. Clique no botão "Pedido".
2. Verifique as informações necessárias para o seu pedido.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: AM 8:00 to PM 8:00 (Current: 오전 8:15)

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Selecione um parceiro.
4. Verifique as informações do produto na guia Lista de pedidos.
 - Você pode decidir se deseja compartilhar o nome do paciente.
5. Verifique os arquivos a serem pedidos na guia Lista de arquivos.
6. Insira a data de entrega desejada.
 - O valor padrão é definido como 7 dias após a data do pedido.
7. Você pode adicionar notas e etiquetas para o seu parceiro a fim de descrever detalhes específicos.
8. Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode enviar todos esses resultados de uma só vez marcando "Pedir todas as relações oclusais".
9. Continue com o seu pedido.
 - **Ignorar pagamento** : Prossiga com o pedido sem usar o sistema de pagamento fornecido pelo Medit Link. Disponível ao fazer o pedido de um parceiro com o estado "Contratado".
 - **Pagar**: Utilize o sistema de pagamento disponibilizado pelo Medit Link para continuar com o pedido. Disponível ao fazer o pedido de um parceiro contratado.

- **OK:** Prosseguimos com o pedido sem nenhuma condição quanto ao preço do produto. Disponível ao fazer o pedido de um parceiro com o estado "Parceria".


Aviso

Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Ignorar pagamento
- Pagar


Confirmar pedido (In Box)

- Aceite o pedido ao recebê-lo.
- Os pedidos aceitos serão encaminhados à Work Box.

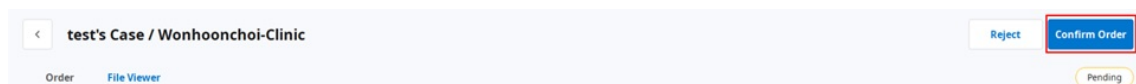


Cancelar pedido (Order Box)

- É possível cancelar um pedido antes que o seu parceiro o aceite.
- Casos cancelados podem ser pedidos novamente.

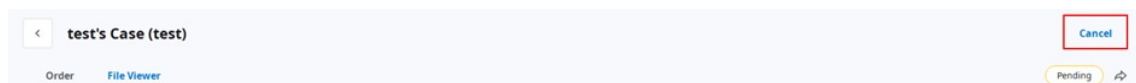

Rejeitar pedido (In Box)

- Você pode rejeitar um pedido recebido.
- Casos rejeitados podem ser pedidos novamente.

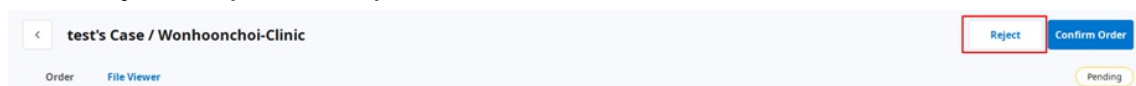

Verificação de casos pedidos

Você pode verificar os detalhes do caso que pediu na Order Box da conta da clínica. Você também pode verificar o caso que recebeu na In Box da conta de laboratório.

Informações de encomenda	As informações que podem ser incluídas no pedido são as seguintes: ID do pedido/nome do paciente/nome da conta/data de escaneamento/data do pedido/data de entrega/data de vencimento da entrega/nota. Você pode verificar os detalhes do produto solicitado e as informações de entrega.
Lista de pedidos	A lista de pedidos exibe os detalhes do produto pedido.
Envio	Insira/verifique as informações de remessa.

Inserir informações de envio (In Box)

Insira as informações de envio do caso concluído e inicie o envio.

1. Clique na guia Envio.
2. Insira as informações de envio e clique em "Registrar".


3. As informações inseridas são enviadas ao seu parceiro.

Gerenciamento da data de entrega

Você pode definir a data esperada de entrega ao fazer um pedido, e essa informação será encaminhada ao seu parceiro.

Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica)


- Ao fazer pedidos na Case Box, você pode inserir a data de entrega solicitada.

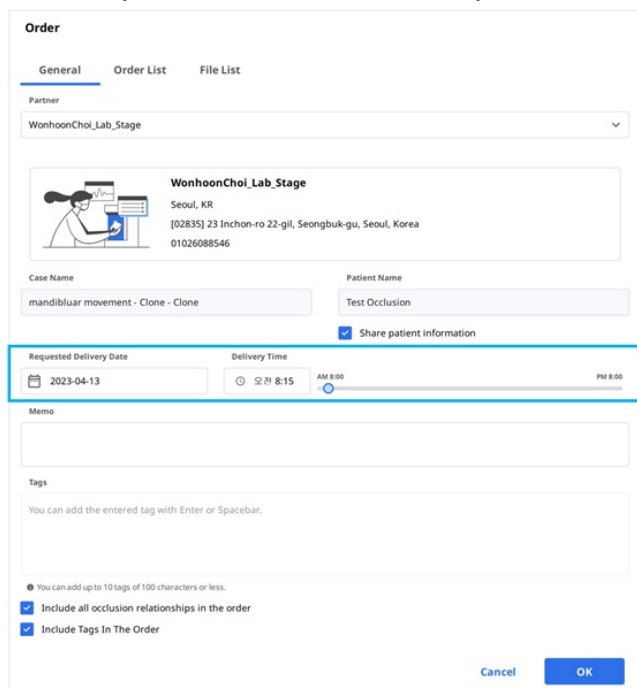

- O valor padrão é 7 dias após a data do pedido.
- Insira a data/hora em que deseja receber os produtos e prossiga com o pedido.
- Você pode definir a hora facilmente usando a barra deslizante.

Configuração da data de entrega estimada (conta de clínica)

- Você pode inserir a data de entrega esperada para o caso pedido a partir da In Box.

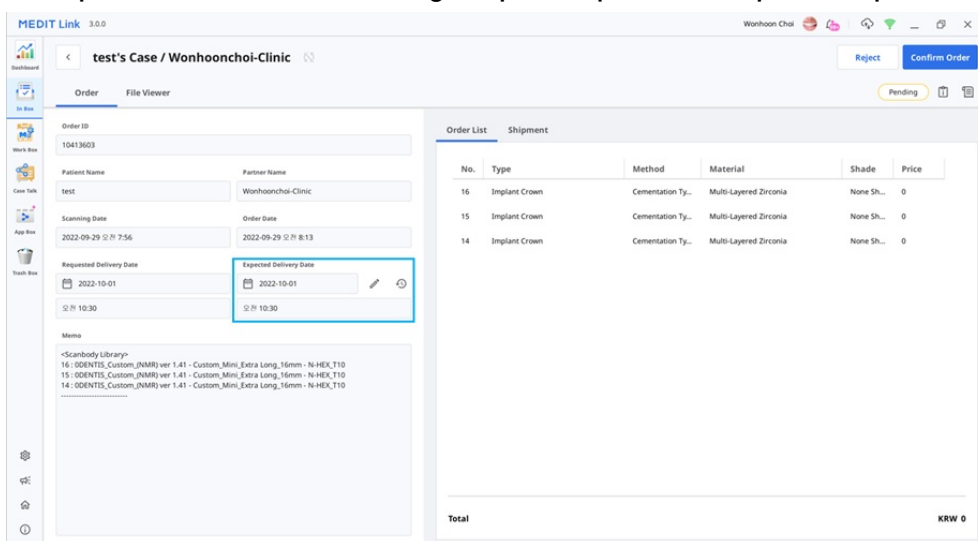


No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

1. Verifique a data de entrega solicitada com o parceiro e a remarque usando o botão "Editar".

2. Insira a data de entrega estimada levando em conta o dia útil real. Se necessário, você também pode deixar um comentário.

3. Clique em "Aplicar".

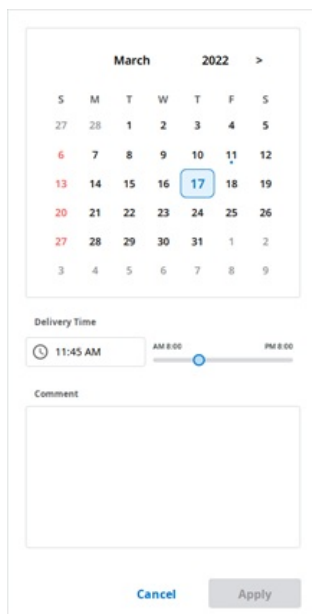

4. A data de entrega estimada e a nota serão encaminhadas juntamente com o pedido.
- Você pode verificar a data e as notas na Order Box.
 - Você pode alterar a data de entrega esperada, e as alterações serão encaminhadas ao seu parceiro.
5. É possível verificar o histórico do caso usando o botão "Histórico".



Concluir casos

Concluir (Work Box/In Box)


Depois que todas as tarefas estiverem concluídas, pressione "Concluído" para concluir o caso.

Concluir um caso nos detalhes dele

Você pode encontrar o botão "Menu" à direita do botão Abrir.



Conclua o trabalho clicando no ícone "Menu" e selecionando "Concluído".

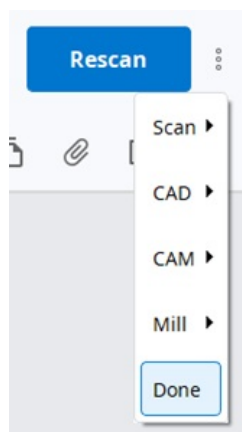


Concluir vários casos na lista de casos

Ao selecionar casos na Work Box, o botão do menu expandido é fornecido no alto da lista.



Conclua vários casos como segue:

1. Acesse a Work Box.
2. Selecione todos os casos a concluir.

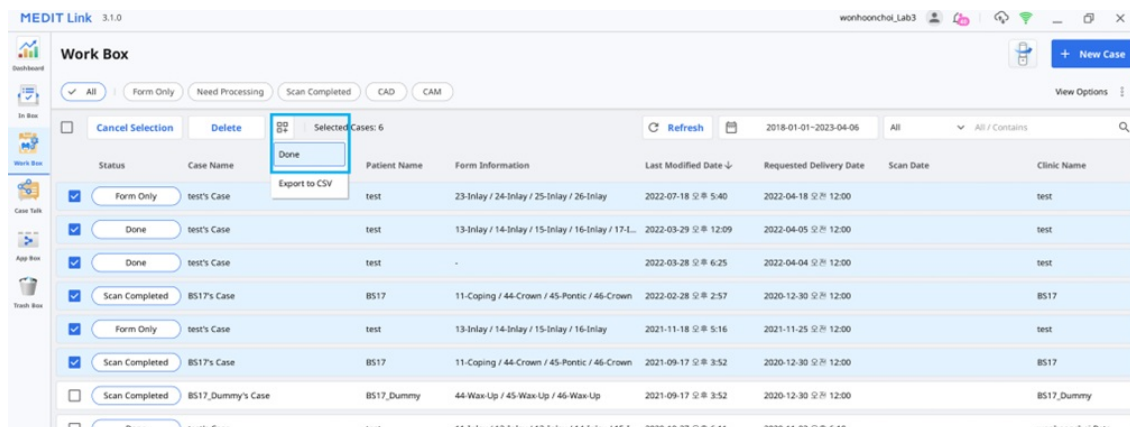

3. Clique no botão "Menu expandido" mencionado acima.




4. Selecione "Concluído" na lista.

Concluir (Case Box/Order Box)

Após a conclusão do caso no laboratório, a clínica precisa confirmar o caso para concluir todo o processo de pedido.

Se o laboratório concluir seu trabalho, a clínica poderá encontrar a função "Confirmar entrega" na Order Box.


Clique nela para que todo o processo do pedido seja concluído e o estado do caso, alterado para "Caso concluído".

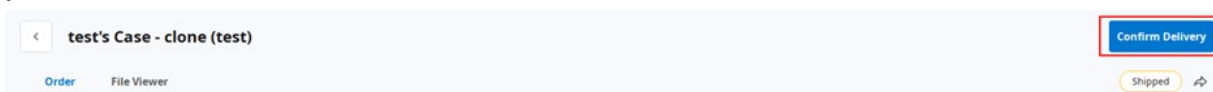

Concluir um caso sem pedido na Case Box

Para casos que não são pedidos ao laboratório, você pode concluí-los a partir da Case Box.

1. Acesse a Case Box.
2. Selecione o caso que deseja concluir.

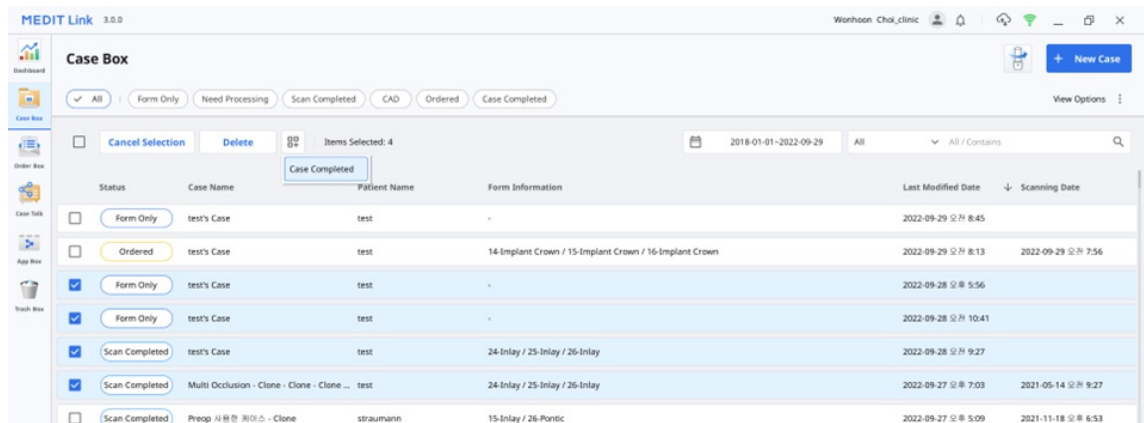

3. Clique no botão "Menu expandido".



4. Escolha "Caso concluído".

Comunicar usando etiquetas

Você pode incluir informações adicionais para o seu caso usando etiquetas e enviá-las aos seus parceiros.

Adicionar etiquetas ao criar um caso

Você pode inserir etiquetas ao criar um caso ou editar informações do caso.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

É fácil pesquisar e selecionar etiquetas que você usou antes.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Adicionar etiquetas ao fazer pedido

Você pode verificar e editar etiquetas na caixa de diálogo Pedido ao fazer pedidos.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Verificar etiquetas em detalhes do caso

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

Order Box

Case Box

Order Box

Case Box

App Box

Trash Box

Order Box

Case Box

App Box

Trash Box

