

USER GUIDE

Medit Link

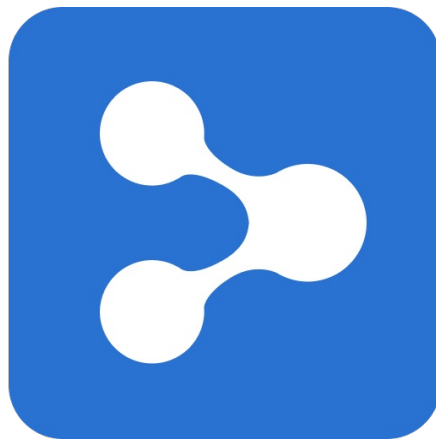


Table of Contents

Medit Link

Introductie	6
Medit Link	6
Overzicht van de dienst	6
Clouddienst	7
Workflowbeheer platform met ordersysteem	7

Medit Link > Installatie

Systeemvereisten	8
Systeemvereisten voor Windows	8
Systeemvereisten voor macOS	8
Systeemvereisten voor Web Service	8
Aanbevolen voor browsers	8
Minimum voor mobiele apparaten	8
Installatie op Windows	9
Installatie op macOS	11
Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met Medit Scan for Clinics.	11

Medit Link > Aan de slag

Aanmelden en inloggen	15
Medit Link Website	15
Aanmelden	15
Login en welkomspagina	17

Medit Link > Medit Link Web

Overzicht	19
Dashboard	20
Dashboard overzicht	20
Medit Insights	20
Abonneer op Medit Insights	21
Uitschrijven voor Medit Insights	22
Case Box/Work Box	23
Dossiers filteren	23
Filter op status	23
Filter op duur	23
Filter op zoekopdracht	24
Details van het dossier	24
Order Box/In Box	26
Orderdetails	26
Tabbladen in Order Box/In Box	26
Case Talk	27
Een Case Talk aanmaken	27
Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen	28
Case Talk details	30
Web Viewer	31
Annotatie	32
Opmerkingen	32
Realtime scherm delen	33
Gegevensboom	33
Gegevensboom beheren	33
3D-model beheren	34

Partners	36
Zoek naar partners	36
Mijn partnerlijst	36
Partner uitnodigen	37
Lidmaatschap	38
Lidmaatschap	38
Mijn plan	38
Cloudopslag	39
Abonneren	40
Opzeggen	42
Betalingsinformatie	43
Een betaalmethode toevoegen	44
Een betaalmethode wijzigen	46
Inwisselen	47
Registreer actiecode	47
Activeer actiecode	48
Betaling	50
Betalingsdetails (Clinic- en Lab-accounts)	50
Informatie over de betaalrekening (alleen Lab-account)	50
Mijn info	51
Mijn account	51
Mijn organisatie (alleen beheerdersaccount)	51
Mijn scanner	52
Mijn prijslijst (alleen lab-beheerdersaccount)	52
Ander menu	53
Mededeling en update	53
Medit informatie	53
Download Medit Link App	53

Medit Link > Medit Link App

Overzicht	55
Box overzicht	55
Titelbalk	57
Mijn informatie	57
Meldingen	57
Dossier synchronisatiebeheerder	58
Uploaden	59
Downloaden	59
Netwerkstatus	60
Menu	61
Dashborad	61
Case Box/Work Box	61
Tabbladen in Case Box/Work Box	62
Functies in Case Box/Work Box	62
Order Box/In Box	63
Tabbladen in Order Box/In Box	64
Case Talk	64
App Box	65
Trash Box	65
Instellingen	66
Patiëntbeheer	66
Nieuwe patiënt toevoegen	66
Patiënt wissen	67
Patiënten samenvoegen	67
Mededeling en update	68
Ga naar Medit Link Web	68

Medit informatie	68
Instellingen	70
Algemeen	70
Opslagbeheer	71
Stel periode in	71
Lokale opslag	71
Cloudopslag	72
Stel verbonden programma in	72
Export opties	73
Dossier omzet instrument	74
Hoe gebruikt u het Dossier omzet instrument	74
Proxy-opties	76
Over	76
Gebruikershandleiding	77
Bestandenbekijker	78
Gegevensboom	78
Instrumenten voor modelcontrole	78
3D-model beheren	79
2D-afbeeldingen beheren	79
Functie-instrumenten	80
Beeldopname en notitie	80
Ortho-opname	80
Gaten vullen	82
Bijknippen	82
Optimaliseer occlusie-uitlijning	84
Onderkaakbeweging	86
Beheer de Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker	87
Meerdere resultaten beheren	87
Weergaveopties	88
Statusfilters	88
Tabel items	89
Weergavetype	90
Galerijweergave	91
Lijstweergave	92
Groeperen	92
Sorteren	93
Filteren en zoeken	95
Op datum filteren	95
Geavanceerde zoekmogelijkheden	95

Medit Link > Workflow

Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen	97
Dossiers aanmaken	97
Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)	97
Dossier aanmaken in Work Box (Lab)	98
Dossiers bewerken	98
Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)	98
Dossier bewerken in Work Box (Lab)	99
Dossiers kopiëren	100
Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)	100
Dossier kopiëren in Work Box (Lab)	100
Dossier wissen	100
Dossier wissen (Clinic en Lab)	101
Formulierinformatie	102
Formulierinformatie registreren in Case Box	102
Voer in op het tabblad Formulier	102

Voer in op het tabblad CAD	102
Formulierinformatie registreren in Work Box	102
Voer in op het tabblad Formulier	102
Voer in op het tabblad CAD	103
Tanden verbinden tot brug	103
Scanopties instellen	103
Medit Scan for Labs	103
Algemene opties	103
Opties per tand	104
Aan favorieten toevoegen	104
Aan favorieten toevoegen	104
Favoriete sjablonen beheren	104
Werken aan scannen/CAD	105
Scanproces	105
CAD-proces	105
Resultaatbestanden krijgen	106
Bestanden met scanresultaten exporteren	106
Geselecteerde bestanden exporteren	107
Marginale lijn exporteren	108
Exporteer marginale lijn als kleur	108
Exporteer marginale lijn als bestand	109
Dossierlijst exporteren als CSV	110
De dossierlijst exporteren	110
Bestanden van Medit Link Web downloaden	111
Case Box/Work Box	111
Web Viewer	111
Hoe downloaden	112
Dossiers bestellen/beheren	114
U kunt eenvoudig een dossier bestellen met gegevens die zijn verkregen uit gekoppelde programma's en de bijbehorende gegevens van de gebruiker.	114
Dossiers bestellen	114
Order bevestigen (In Box)	115
Order annuleren (Order Box)	115
Order afwijzen (In Box)	115
Bestelde dossiers controleren	115
Verzendinformatie invoeren (In Box)	116
Bezorgdatum beheren	117
De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)	117
Dossiers voltooiën	118
Voltooiën (Work Box/In Box)	118
Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails	118
Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst	119
Voltooiën (Case Box/Order Box)	119
Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box	119
Communiceren met behulp van tags	121
Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier	121
Voeg tags toe bij het bestellen	122
Controleer tags voor dossierdetails	122

Introductie

Medit Link

Medit Link is een hulpmiddel voor samenwerking dat is ontworpen om de communicatie tussen praktijken en laboratoria te vergemakkelijken, zodat voor elke partij een optimale workflow ontstaat.

Het biedt verschillende functies op basis van het type account en de bijbehorende machtigingen. Het programma biedt een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor het beheer van de workflow, van het scannen met mond- en modelscanners tot het bestellen van dossiers, en van het ontwerpen tot het produceren van prothesen.

Medit Link bestaat uit een webdienst en een computerapplicatie.

Overzicht van de dienst

		Web	App
		• Het account registreren en beheren • Zoeken • Partners zoeken en beheren • Deel dossiers via Web Viewer met een deelbare link • Krijg toegang tot dossiers die in de app zijn gemaakt • Orders beheren	• Voer formulierinformatie in • Scannen • Plaats/ontvang orders en verricht betalingen • Verbind met CAD • Beheer patiënten
Praktijk	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw organisatie, beheer betaalgegevens en deel dossiers. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Lidmaatschap - Betaling - Mijn info	Voer formulierinformatie in, scan, verbind met CAD, plaats orders, verricht betalingen en beheer patiënten. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Patiëntbeheer
	Lid	- Case Box - Case Talk - My Info	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Lab	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw organisatie, beheer betaalgegevens en deel dossiers. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Lidmaatschap - Betaling - Mijn info	Voer formulierinformatie in, scan, verbind met CAD en ontvang/beheer orders. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

	Lid	- Work Box - Case Talk - My Info	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
--	-----	--	---

!Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Betaling

Clouddienst

Medit Link ondersteunt het automatisch uploaden/downloaden van databases en bestanden via AWS (Amazon Web Services).

De in de cloud opgeslagen gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de computers van meerdere gebruikers binnen de organisatie, zodat ze vanaf elke computer op elk moment toegang hebben tot dezelfde gegevens. Dankzij back-up en herstel in de cloud zijn al uw gegevens veilig. Het houdt uw gegevens veilig, zelfs in het geval van gegevensverlies als gevolg van een plotselinge computerstoring.

Met de clouddienst kunnen tandartsen en laboratoria die samenwerken snel gegevens delen zonder dat ze de scans per e-mail hoeven te verzenden of handmatig moeten overbrengen. Alle gegevens, inclusief patiëntinformatie, worden veilig gecodeerd, opgeslagen en verzonden. Medit voldoet aan medische wet- en regelgeving zoals HIPAA en AVG.

Workflowbeheer platform met ordersysteem

Medit Link biedt een eigen order- en betaalsysteem.

- Met Medit Link kunt u contracten opstellen tussen tandartsen en tandtechnische laboratoria, en snel en eenvoudig gegevens delen.
- Controleer en beheer de orderstatus.

Het systeem is geschikt voor creditcards en werkt met betalingsmodules van online betaalplatforms, zoals Stripe (www.stripe.com) en I'mPort (<http://www.iampor.kr>), waardoor de betalingsdiensten eenvoudig en handig zijn.

!Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Betaling

Systeemvereisten

!Opmerking

Raadpleeg de systeemvereisten voor Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs als u de scansoftware met uw scanner wilt gebruiken.

Systeemvereisten voor Windows

	Laptop en Desktop
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz of hoger
RAM	16 GB of hoger
Grafische kaart	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) of hoger / of gelijkwaardige AMD-videokaart
Besturingssysteem	Windows 8 64 Bit (niet beschikbaar in 32 Bit) of hoger

Systeemvereisten voor macOS

	Mac
Processor	M1 met 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB of hoger
Besturingssysteem	Monterey 12

Systeemvereisten voor Web Service

Aanbevolen voor browsers

	Browsers
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum voor mobiele apparaten

Type	Android	iOS
Apparaat	Gelijkwaardige aan Galaxy S7 of hoger	Gelijkwaardige aan iPhone 7 of hoger
Besturingssysteem	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB of hoger	2 GB of hoger
AP	Boven Snapdragon 710	A10 Fusion


Installatie op Windows

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met scanverwervingsprogramma's - Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs.


1. Voer Medit_LinkSetup.exe uit.
2. Selecteer een taal voor de installatie.
3. Selecteer de map voor de installatie van Medit Link. Lees en ga akkoord met de licentievoorwaarden en klik op "INSTALLEREN".

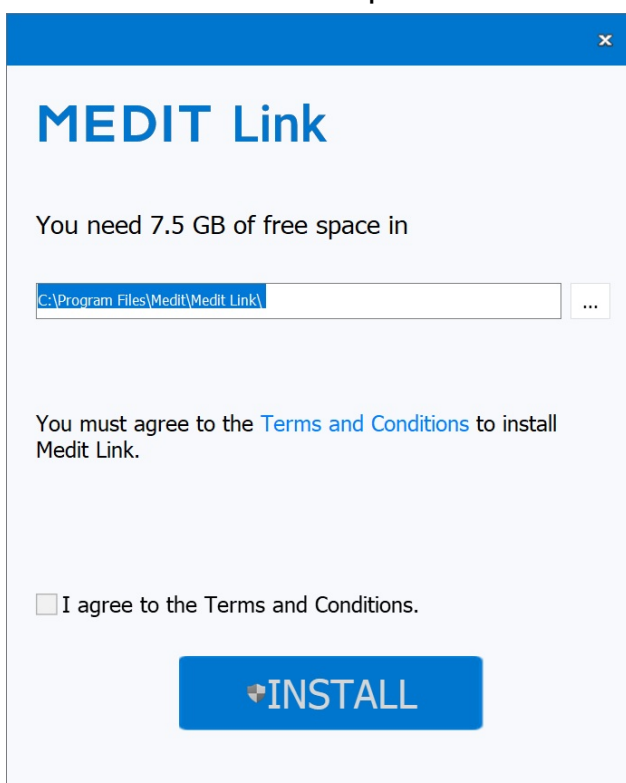

4. Zorg ervoor dat de scannerkabel is losgekoppeld van de computer voordat u doorgaat naar de volgende stap. De installatie kan niet worden uitgevoerd als de scanner op uw pc is aangesloten.
5. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. Schakel uw pc niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact voordat de installatie is voltooid.

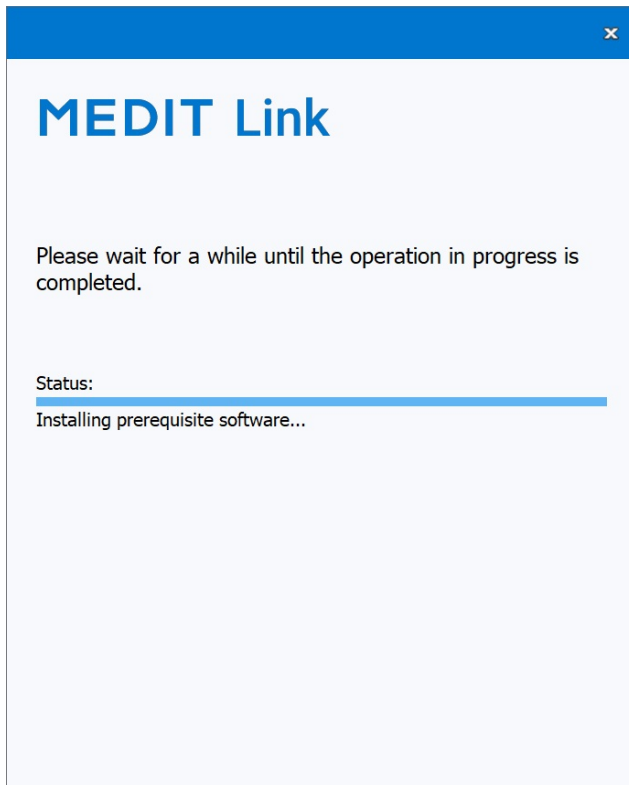

6. Start uw pc opnieuw op nadat de installatie is voltooid. U kunt doorgaan zonder de pc opnieuw op te starten als u niet over de scanner beschikt.

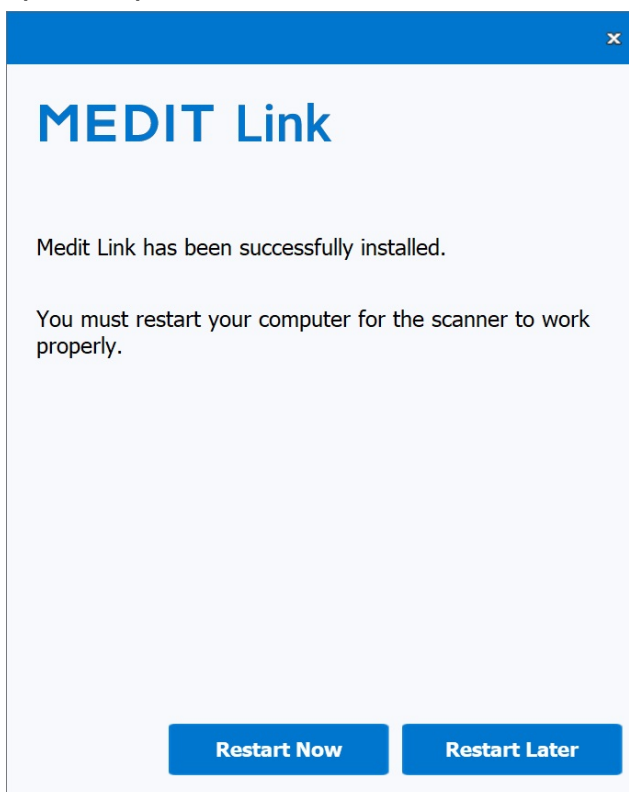


iOpmerking

Als u uw pc niet opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid, werkt de scanner mogelijk niet goed.


Installatie op macOS

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met Medit Scan for Clinics.


1. Voer Medit_Link_x.x.x.pkg uit en klik op "Doorgaan".

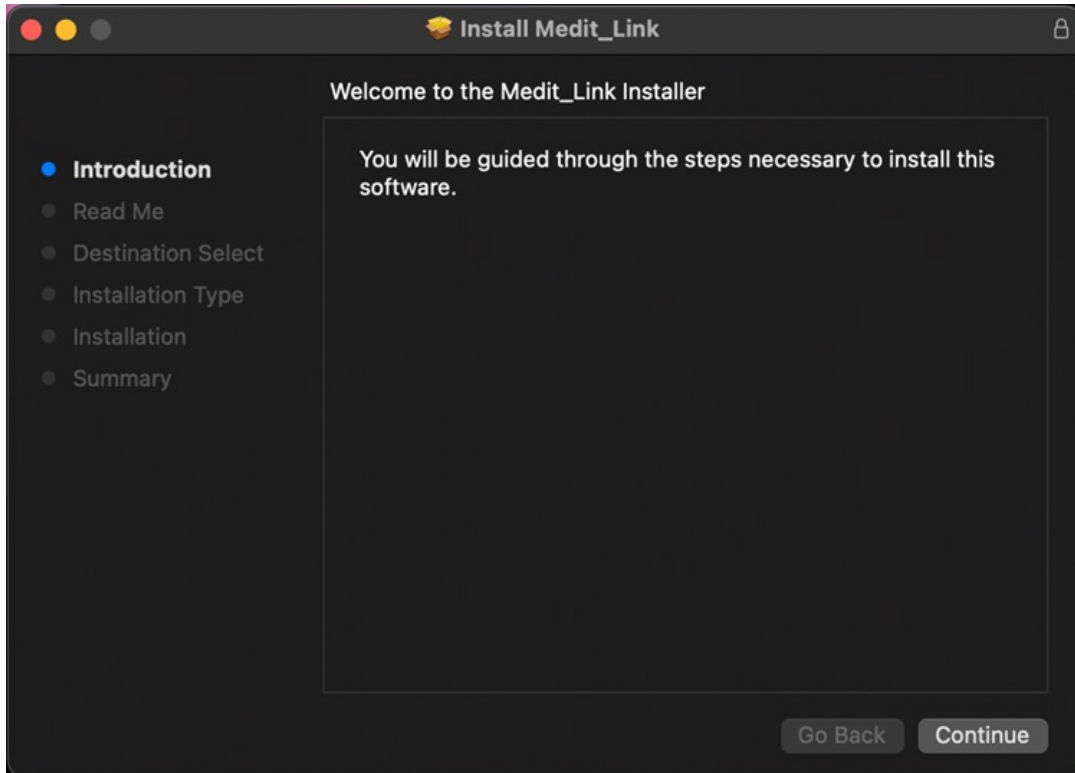


2. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op "Doorgaan".

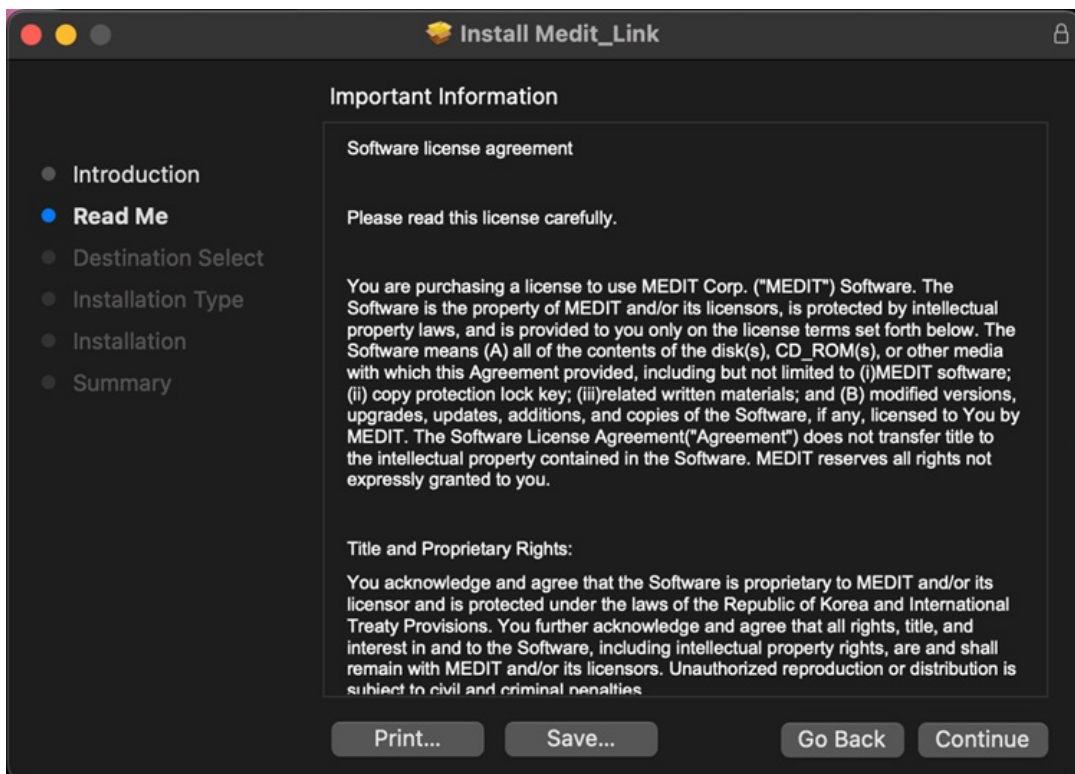

3. Selecteer de schijf voor installatie en klik op "Doorgaan".

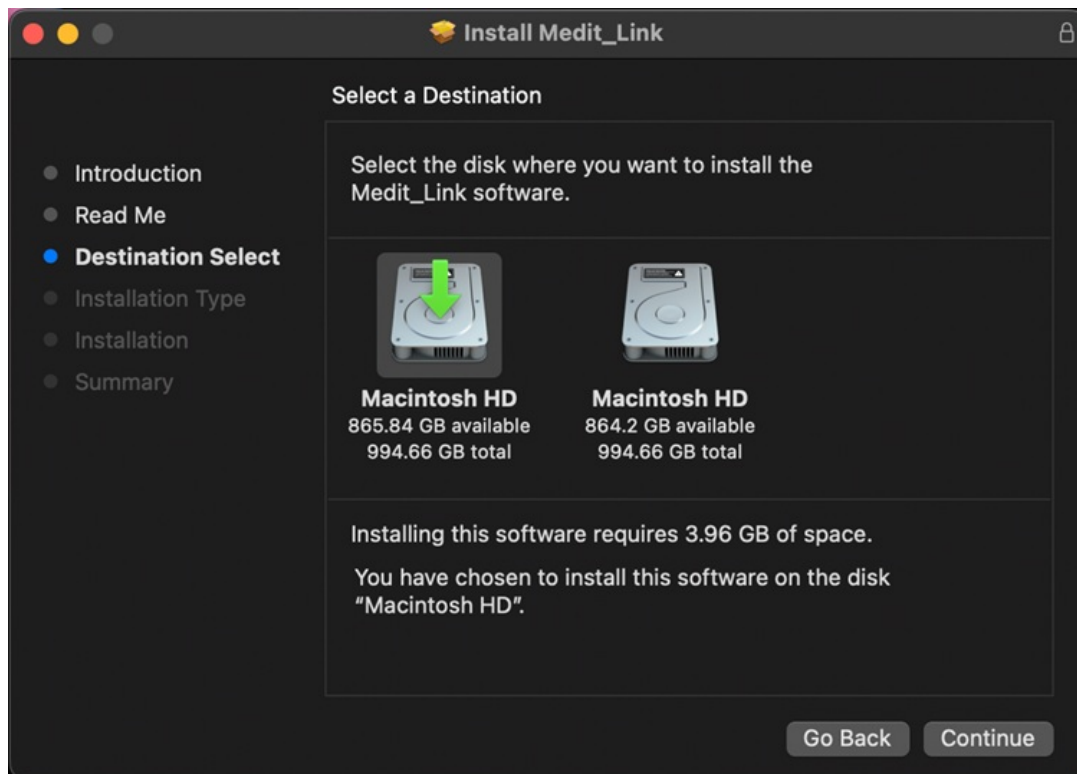


4. Klik op "Installatielocatie wijzigen..." om de installatiebestemming te wijzigen.

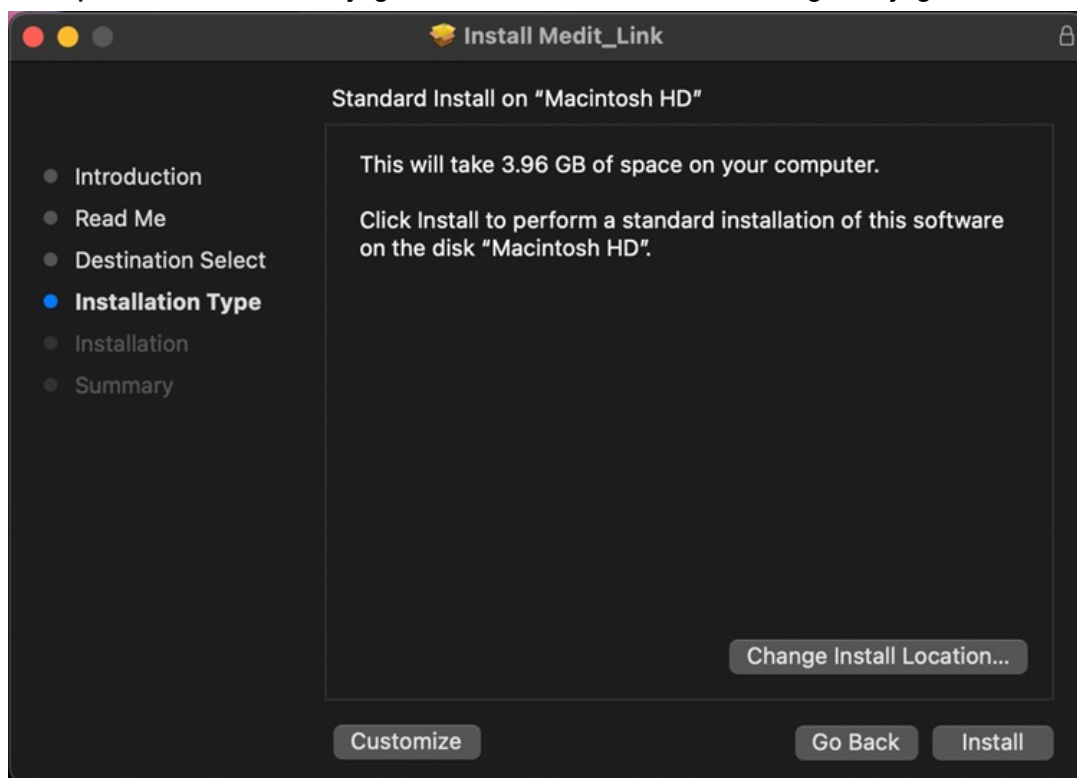


5. Klik op "Installeren" en typ uw Mac-wachtwoord om de installatie toe te staan indien daarom wordt gevraagd.



6. Wacht tot de installatie is voltooid.

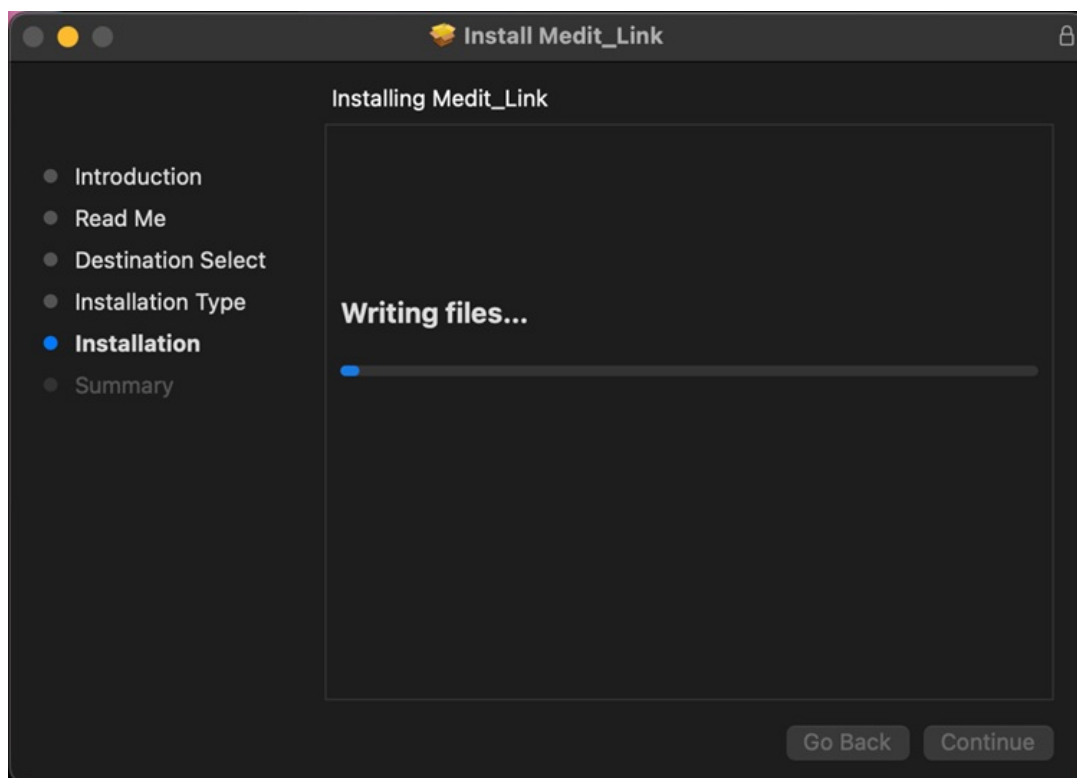


7. Klik op "Sluiten" om het installatievenster af te sluiten.

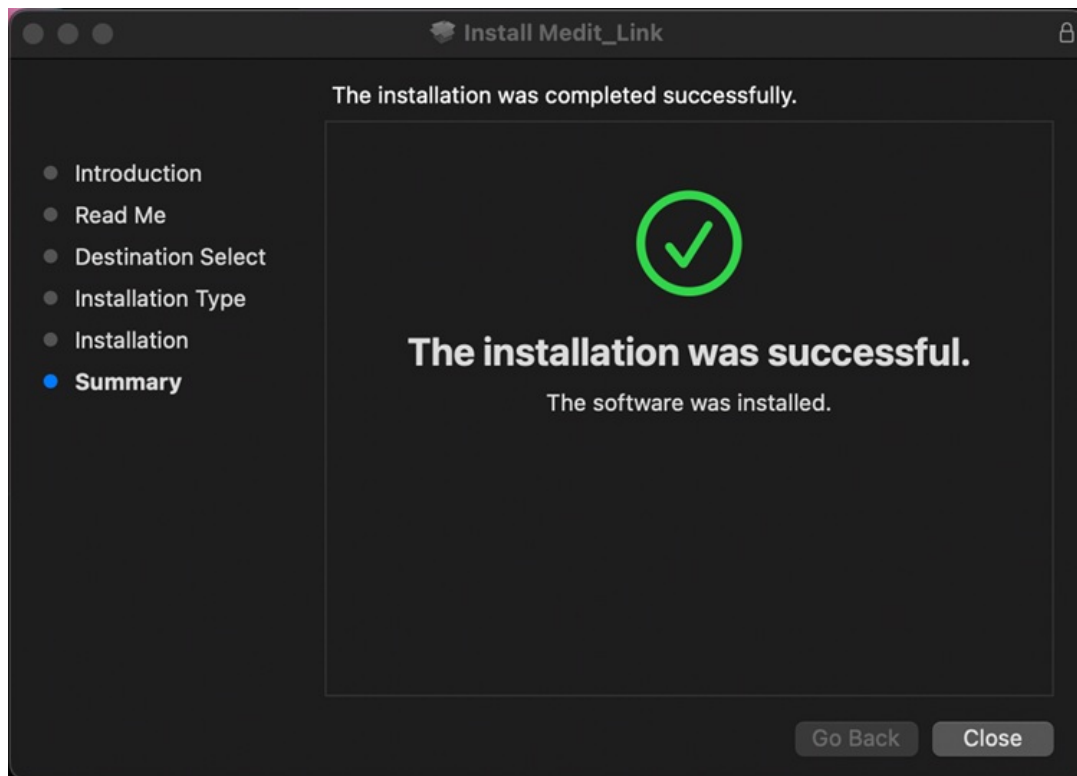

Aanmelden en inloggen

Medit Link Website

Meld u aan voor de Medit Link service op www.meditlink.com.

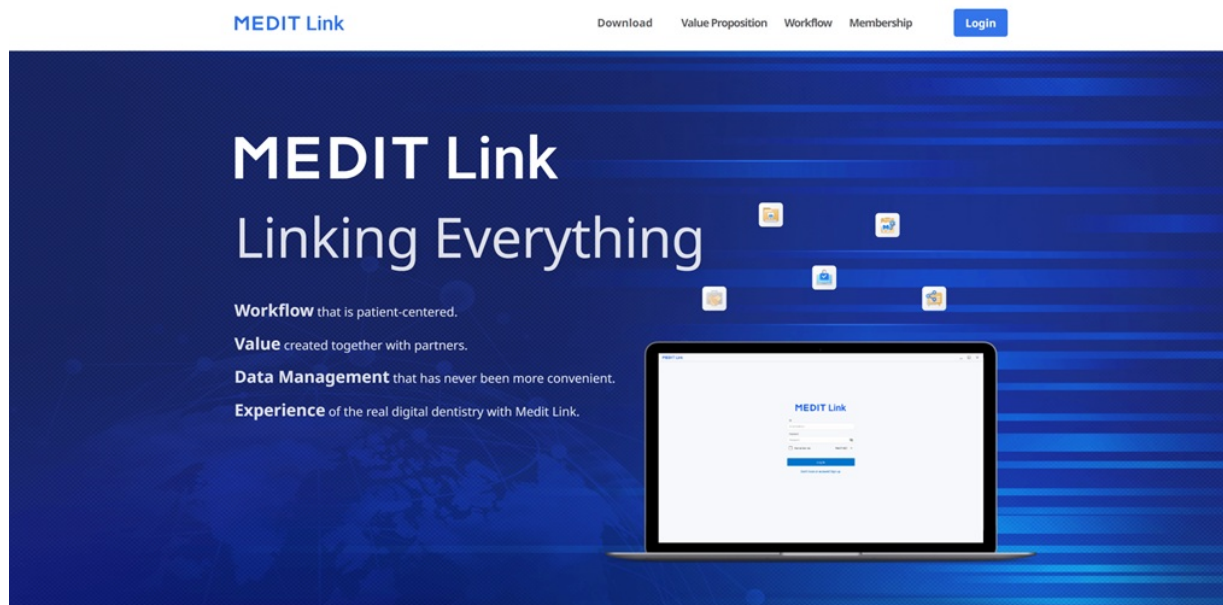

Opmerking

Meld u aan voor Medit Link China op www.meditlink.cn.

Aanmelden

Om de service van Medit Link te gebruiken, moet u eerst een account aanmaken. U kunt de functies van Medit Link gebruiken nadat u als praktijk of laboratorium een account heeft aangemaakt.

Gebruikers kunnen een van de volgende vier accounttypen selecteren om zich te registreren voor een lidmaatschap en gebruik te maken van de dienst met volledige of beperkte functionaliteit en privileges, afhankelijk van het gekozen accounttype.

- Praktijk - Beheerder
- Praktijk - Lid
- Lab - Beheerder
- Lab - Lid

De beheerder is meestal een vertegenwoordiger van uw organisatie en heeft volledige toegang tot alle functies en diensten van Medit Link. Het ledenaccount heeft daarentegen beperkte toegang.

Volg deze stappen om u aan te melden voor het lidmaatschap:

1. Klik op "Heeft u nog geen account? Aanmelden" op de inlogpagina.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

- Klik na het lezen van de beschrijvingen op de knop "Registreren" voor het gewenste accounttype.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.


Register

- Voer de naam van de praktijk of het laboratorium in en doe vervolgens, afhankelijk van het gewenste accounttype, het volgende:
 - Als u zich registreert als beheerder, klikt u op "Controleer beschikbaarheid" om te zien of de ingevoerde naam beschikbaar is.
 - Als u zich als lid registreert, klikt u op "Zoeken". De beheerder moet uw organisatie al hebben geregistreerd voordat u zich aanmeldt.
- Vul de rest van het registratieformulier in en klik op "Registreren". Er wordt u een verificatiemail toegestuurd.

5. Om het registratieproces te voltooien, moet u uw e-mailadres verifiëren door op de ontvangen link te klikken.

Login en welkomspagina

1. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in op de inlogpagina en klik op "Inloggen".

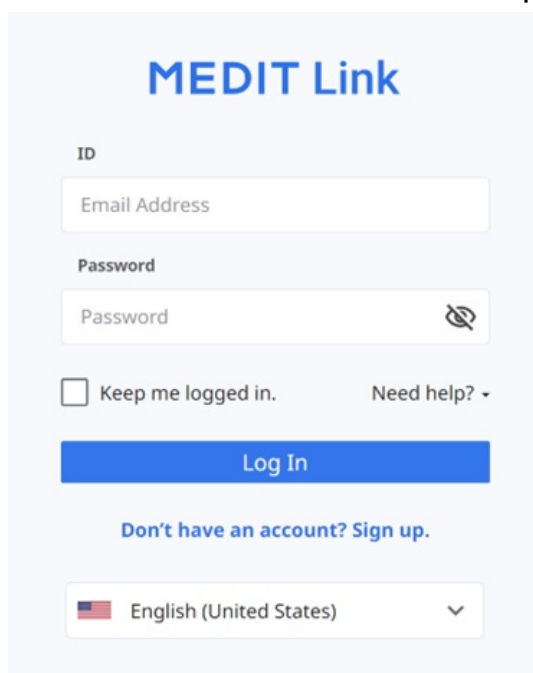


The login form for MEDIT Link is displayed on a light blue background. At the top, the text "MEDIT Link" is shown in a large, bold, blue font. Below this, the label "ID" is positioned above a white input field with the placeholder text "Email Address". Underneath, the label "Password" is above another white input field with the placeholder text "Password" and a small eye icon to its right. Below the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in." and a link "Need help? -". A prominent blue button with the text "Log In" is centered below these elements. Under the button, a link reads "Don't have an account? Sign up.". At the bottom, there is a language selection dropdown menu showing "English (United States)" with a small flag icon and a downward arrow.

2. Het volgende dialoogvenster verschijnt als u de organisatie-informatie niet hebt ingevuld.

!Opmerking

Om Medit Link-diensten te gebruiken, moet informatie over uw organisatie worden ingevoerd via het beheerdersaccount.

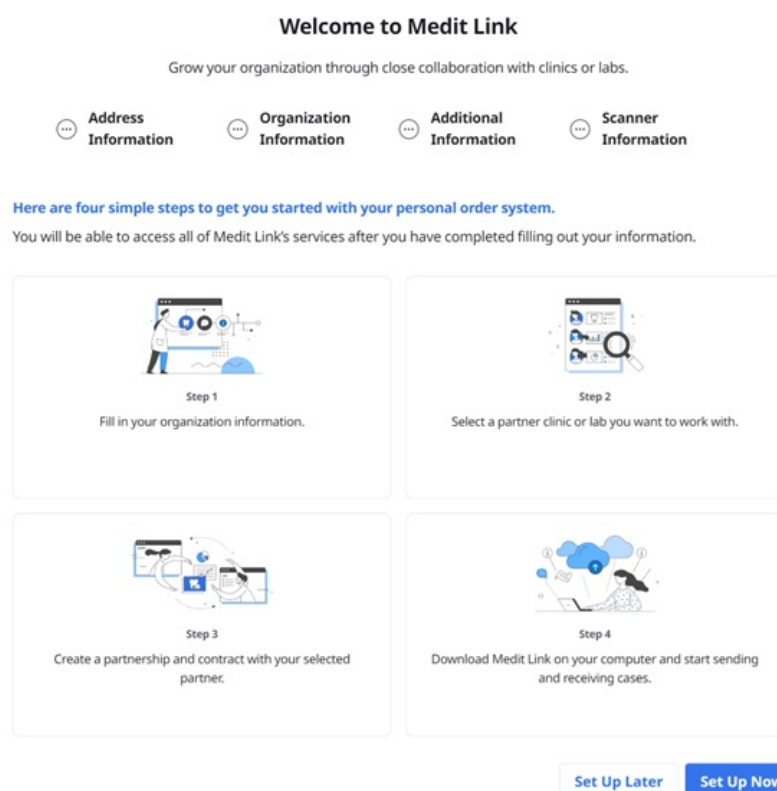

The "Welcome to Medit Link" page features a light blue header with the title "Welcome to Medit Link" and the subtitle "Grow your organization through close collaboration with clinics or labs." Below the header, four circular icons represent the setup steps: "Address Information", "Organization Information", "Additional Information", and "Scanner Information". A blue link states: "Here are four simple steps to get you started with your personal order system." Below this, a paragraph reads: "You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information." The main content area contains four numbered steps, each with an illustration and a description: Step 1 (Fill in your organization information), Step 2 (Select a partner clinic or lab you want to work with), Step 3 (Create a partnership and contract with your selected partner), and Step 4 (Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases). At the bottom right, there are two buttons: "Set Up Later" and "Set Up Now".

3. Klik op "Nu instellen" en voer stap voor stap de adresgegevens, organisatie-informatie,

aanvullende gegevens en scannerinformatie in.

Als u tijdens de registratie heeft ingestemd met het ontvangen van marketinginformatie, ontvangt u nuttige informatie over het product en de diensten van de fabrikant.

4. De informatie die op de welkomspagina is ingevoerd, kan op elk moment worden gewijzigd via "Mijn info" > "Mijn organisatie" in Medit Link Web.

Overzicht

MEDIT Link

https://stage-www.meditlink.com/casebox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세게... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열기

MEDIT Link

The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability. wonhoon choi

Case Box

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Case Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

View Options

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Dashboard overzicht

U kunt de statistieken van alle werkzaamheden op Medit Link bekijken in de vorm van grafieken en overzichten, zowel in de Medit Link App als op het web.

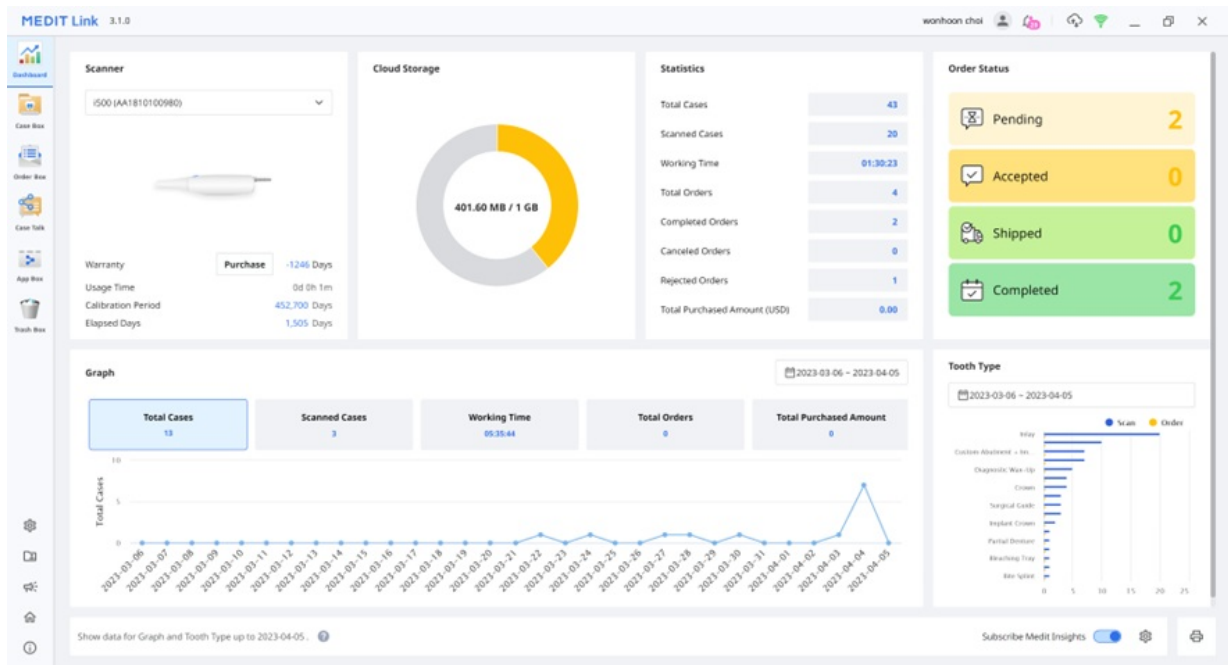

Grafieken en diagrammen in het dashboard tonen statistieken voor al het werk dat in Medit Link is gedaan.

Scanner	Biedt informatie over de actieve scanners, waaronder garantie, gebruikstijd van de scanner, het kalibratie-interval en de verstreken kalibratietijd.
Cloudopslag	Toont de totale capaciteit van de cloud en de hoeveelheid die in gebruik is.
Statistieken	Biedt statistieken over dossiers op basis van de status.
Orderstatus	Biedt statistieken over dossiers op basis van de orderstatus.
Grafiek	Grafiekinformatie per periode.
Tandtype	Geef statistieken over het aantal scans en orders per behandelingsinformatie.


Medit Insights

Medit Insights is een rapportageservice die u helpt bij het analyseren van uw gebruikstatistieken.

!Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Medit Insights

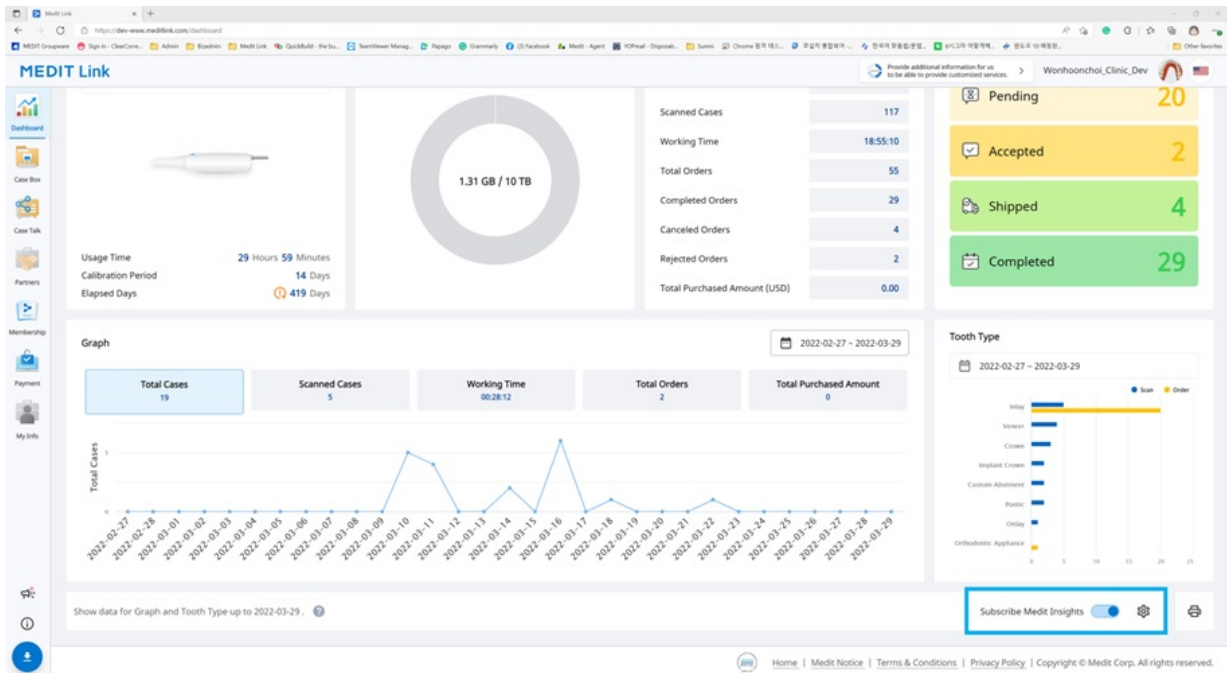

Abonneer op Medit Insights

U kunt op de tweede dag van elke maand een rapportagemail ontvangen. Er is geen extra aanmeldingsproces nodig. Schakel gewoon "Abonneren op Medit Insights" in.

Als u niet het e-mailadres gebruikt dat u voor uw Medit Link-account heeft gebruikt, kunt u een ander e-mailadres instellen om Medit Insights te ontvangen.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Op de tweede dag van elke maand ontvangt u een e-mail met de statistieken zoals hieronder weergegeven.

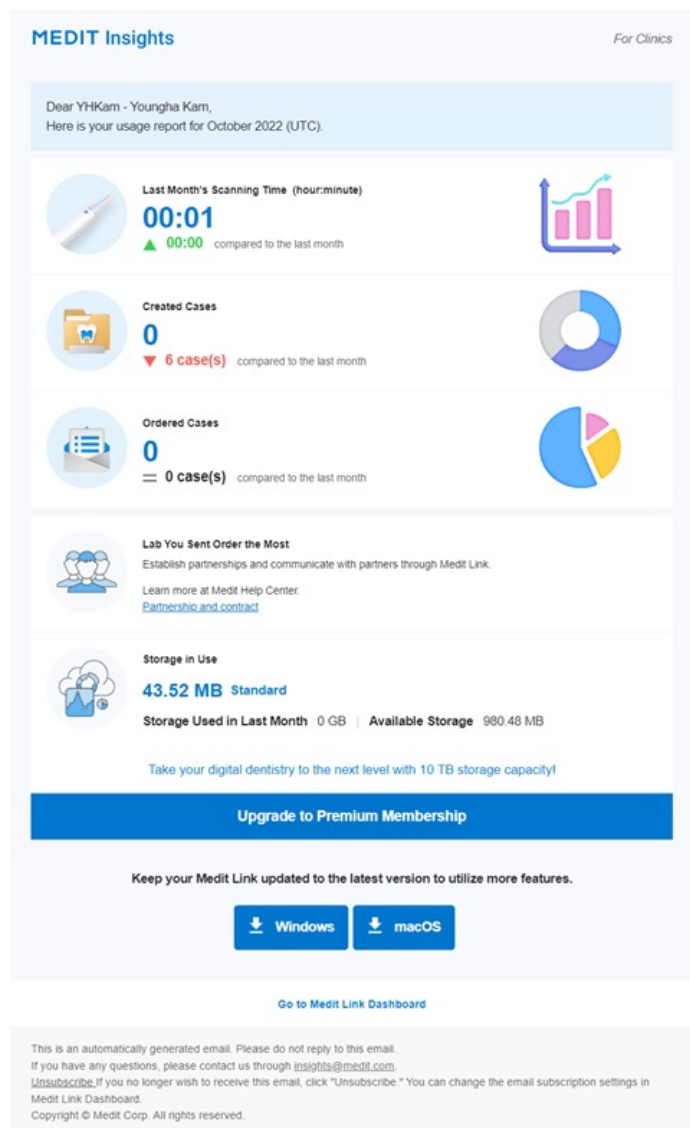


Banner	Medit biedt hier nuttige tips en informatie. * Als u de banner niet wilt zien, verwijdt u het vinkje bij Marketing- en promotieovereenkomst in Mijn Info > Mijn account.
Statistische informatie	De statistische informatie wordt weergegeven, zoals scantijd, aangemaakt dossier, meest bestelde lab, etc.
Medit Link Download	De knop bevat de downloadlink van Medit Link.
Dashboard	Alle statistische informatie is gebaseerd op de informatie op uw Dashboard. Bekijk meer details op het Dashboard.

Uitschrijven voor Medit Insights

Schakel "Abonneren op Medit Insights" uit op het Dashboard of klik op "Uitschrijven" in de ontvangen e-mail.

Case Box/Work Box


De Case Box (praktijk) of Work Box (lab) toont alle dossiers die de gebruiker op de Medit Link-applicatie heeft aangemaakt. Bekijk bestanden via een webbrowser zonder dat u een apart programma hoeft te installeren.

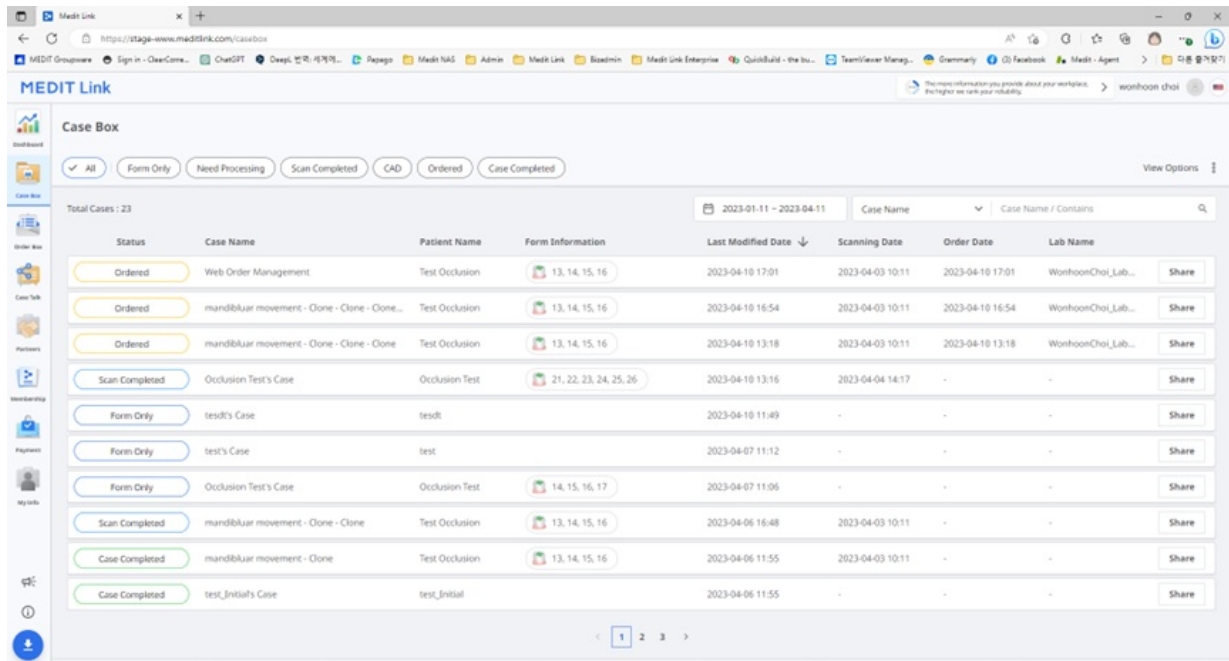

Dossiers filteren

Filter op status

U kunt dossiers filteren op basis van hun status.

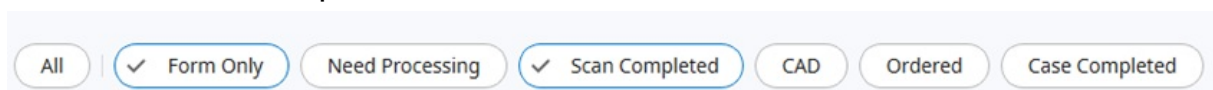

- De gebruiker kan op de gewenste status klikken. De browser toont alleen dossiers met de gekozen status.
- De gebruiker kan meerdere statussen tegelijk selecteren.

Het volgende statustype is gebaseerd op het type account:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Lab)	Alles/Alleen formulier/Verwerking nodig/Scan voltooid/CAD/Voltooid

Filter op duur

U kunt dossiers filteren en weergeven die voor het laatst werden gewijzigd binnen de door u ingestelde periode.

1. Klik op de periodefilter.



2. Selecteer het tijdbereik.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Alle: Toont alle dossiers.
- Aangepast bereik: Geef begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die binnen die periode zijn gewijzigd.
- Vandaag: Toont dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- Gisteren: Toont dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 30 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 90 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 90 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Deze maand: Toont de dossiers van deze maand.
- Vorige maand: Toont de dossiers van de vorige maand.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Filter op zoekopdracht

U kunt de zoekmogelijkheden gebruiken om eenvoudig en snel de gewenste informatie op te zoeken.


Case Name

Case Name / Contains

Zoekopties op basis van clinic/lab account:

Case Box (Clinic)	Dossiernaam, patiëntnaam, patiënt-ID, laboratoriumnaam
Work Box (Lab)	Dossiernaam, patiëntnaam, praktijknaam, Order-ID

Details van het dossier

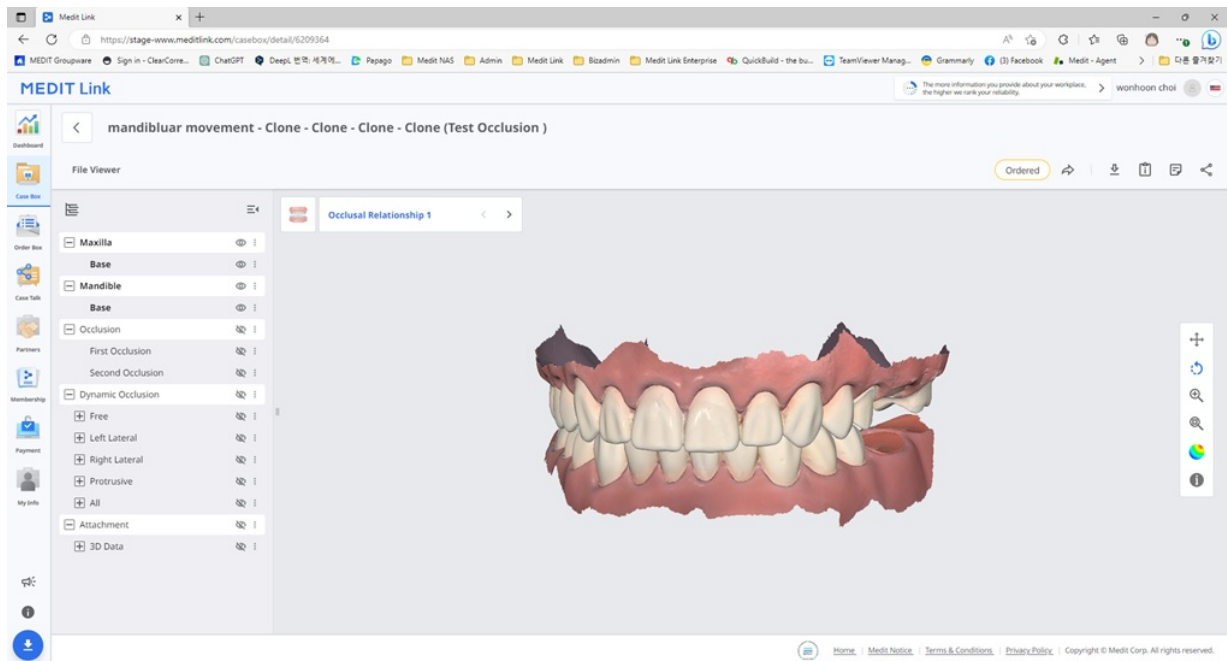

In de Case Box/Work Box vindt u de volgende instrumenten voor dossierbeheer.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.
	Ga naar details	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Downloaden	Download bestanden in het dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.
	Delen	Maak een link om te delen. Gebruikers met de link hebben toegang tot de 3D-gegevens in een browser zoals Chrome, Firefox of Safari zonder extra programma's te hoeven installeren. U kunt de link met iedereen of alleen met specifieke personen delen. Er kan een pincode of een vervaldatum voor links worden ingesteld om privégegevens te beveiligen.

Order Box/In Box

De Order Box (clinic) of In Box (lab) toont bestelde dossiers op de Medit Link-applicatie.

Orderdetails

1	Toon de dossiernaam en de patiëntnaam.
2	Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen).
3	Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbekijker
4	Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie en tags, etc.
5	Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum, en de notitie en tags.
6	Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus.


Tabbladen in Order Box/In Box

Order	Bestandenbekijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals Order-ID, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De bestandenweergever toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.

De gebruiker kan via "Case Talk" in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

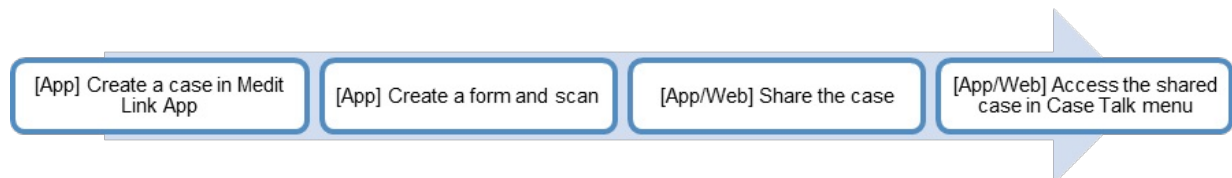


Gedeelde dossiers kunnen worden bekeken via een webbrowser zonder dat er een apart programma geïnstalleerd hoeft te worden. Dit maakt eenvoudige communicatie over 3D-gegevens op verschillende apparaten mogelijk.


Een Case Talk aanmaken

U kunt een gedeelde link maken naar een dossier die is aangemaakt in Case Box/Work Box.

1. Zoek een dossier dat u wilt delen en klik op de knop "Delen" aan de rechterkant.

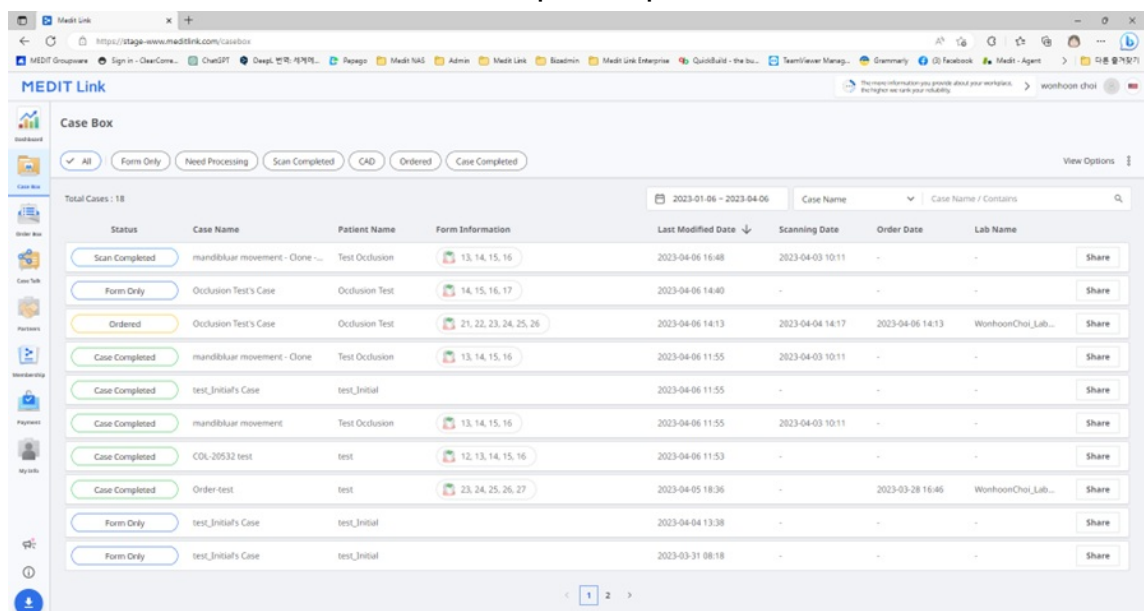

2. Selecteer de bestanden die u wilt delen.

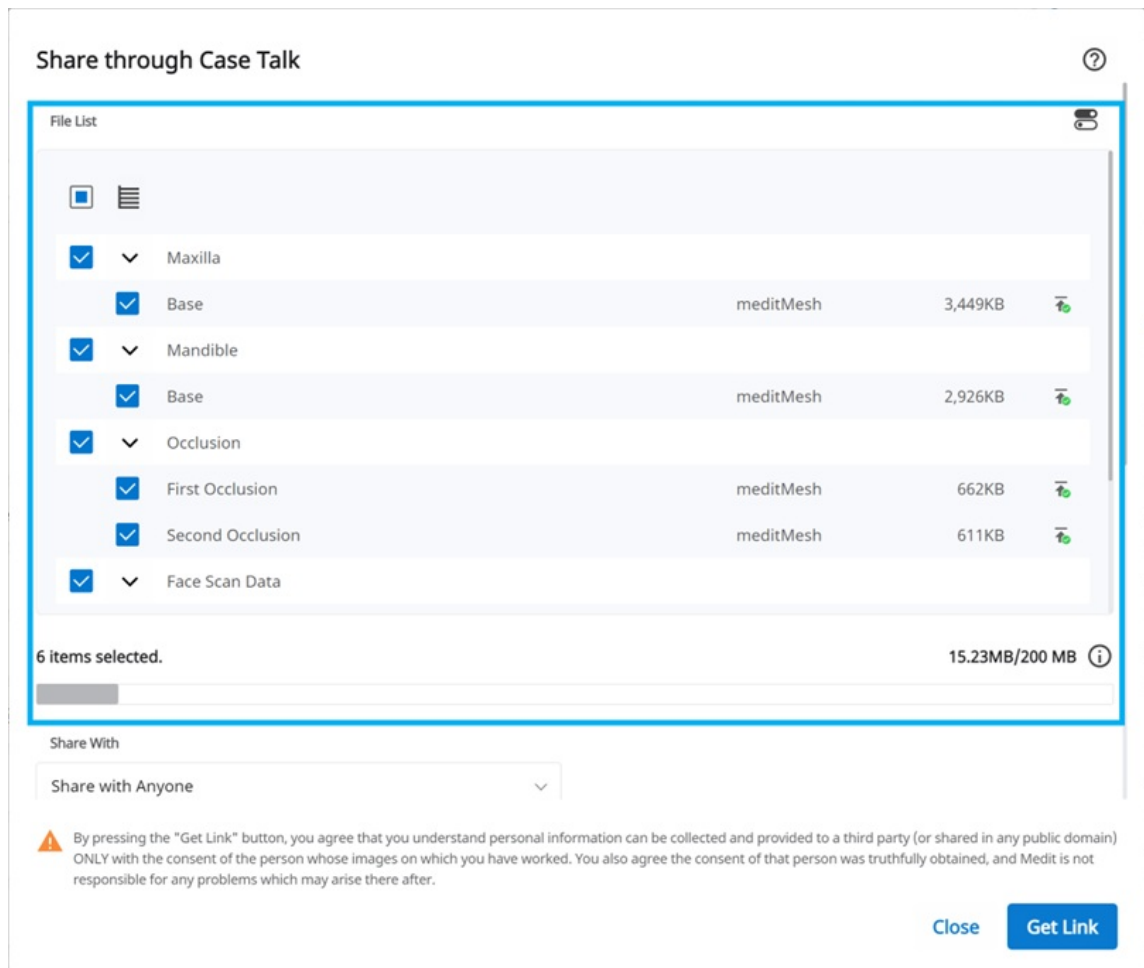

3. Stel het type toestemming voor delen en de opties voor delen in.
4. Klik op "Link aanmaken" om een gedeelde link te maken.


Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen

Deel met	• Deel met iedereen Maakt een gedeelde link. U kunt de bestanden met iedereen delen. • Deel met specifieke personen Maakt een gedeelde link en stuurt deze naar specifieke personen.
Deel via	Als u "Deel met specifieke personen" selecteert, kunt u de link op verschillende manieren met specifieke mensen delen. • E-mailadres • SMS • Partners
Vervaldatum	Stel de vervaldatum van de link in. Nadat de link is verlopen, hebben de mensen met wie u de link heeft gedeeld geen toegang meer tot de bestanden. U kunt de vervaalperiode tot 90 dagen na vandaag verlengen.
Pincode	Stel een 6-cijferige toegangscode in om de gegevens te beveiligen.
Patiëntnaam delen	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle mensen met de link de naam van de patiënt zien.
Verleen toestemming om te downloaden	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle gebruikers met de link de bestanden downloaden.

Opmerkingen toestaan	- Als u deze optie aanvinkt, kunt u communiceren via de gedeelde link. - Als u de optie uitschakelt, kan de ontvanger uw opmerkingen bekijken, maar geen eigen opmerkingen toevoegen.
Opmerking	U kunt een bericht achterlaten in de opmerkingen.

Case Talk details

U kunt bestanden in het gedeelde dossier zien. De volgende functies zijn beschikbaar op de detailpagina van Case Talk.

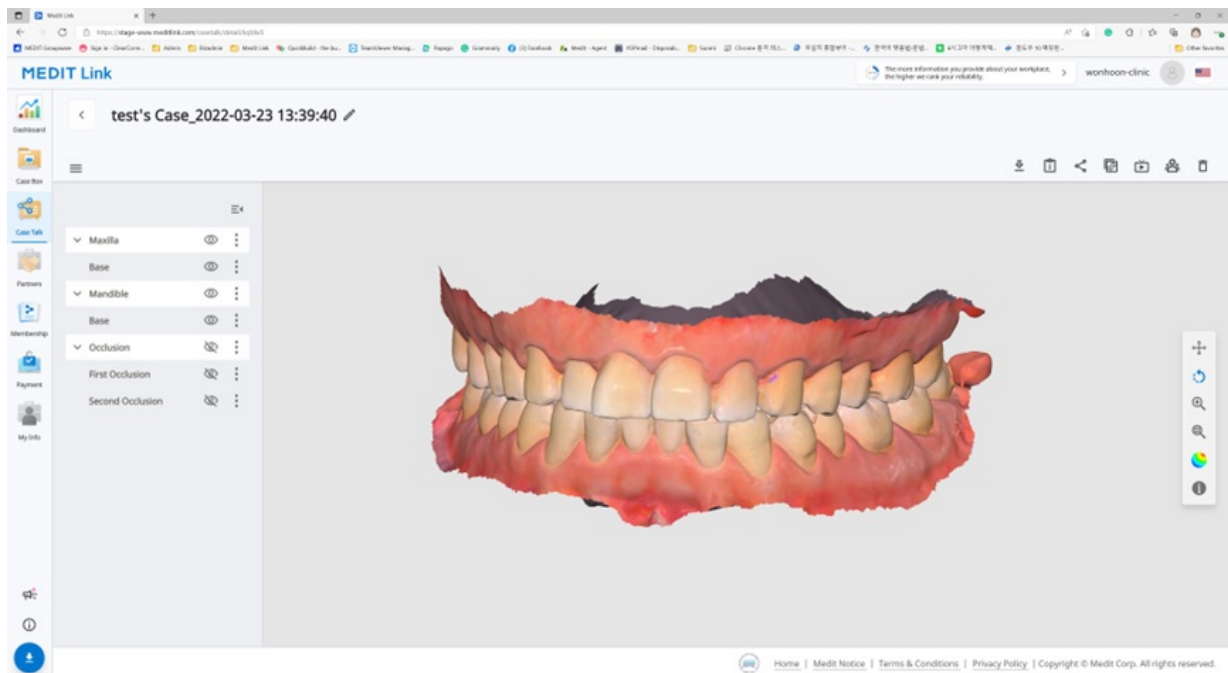

	Downloaden	Download alle bestanden in dit dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelininstellingen.
	Kopieer link	Kopieer de gedeelde link naar het klembord. De gekopieerde link toont de gedeelde bestanden in uw webbrower.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die toegang hebben tot de gedeelde link.
	Wissen	Verwijder de gedeelde link. Een verwijderde gedeelde link is niet langer toegankelijk.

!Opmerking


De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Web Viewer

U kunt gedeelde gegevens bekijken via Case Talk in een webbrowser.

Het is mogelijk om te communiceren met mensen die toegang hebben tot de link door annotaties en opmerkingen te plaatsen.

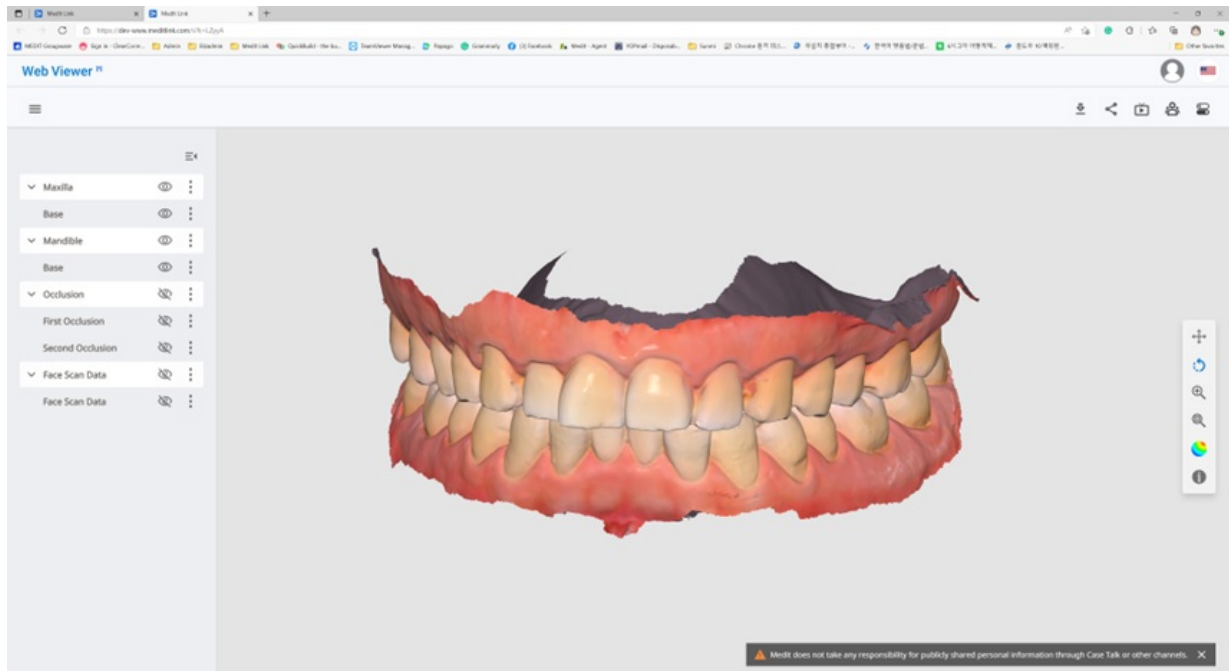

	Downloaden	Download alle bestanden in dit dossier naar de pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelininstellingen.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die verbonden zijn met de gedeelde link.
	Tandnummering	Wijzig het systeem voor tandnummering.


!Opmerking

De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Annotatie

Voeg annotaties toe aan een specifieke locatie op het 3D-model. Iedereen met de link kan de door u toegevoegde annotaties bekijken.

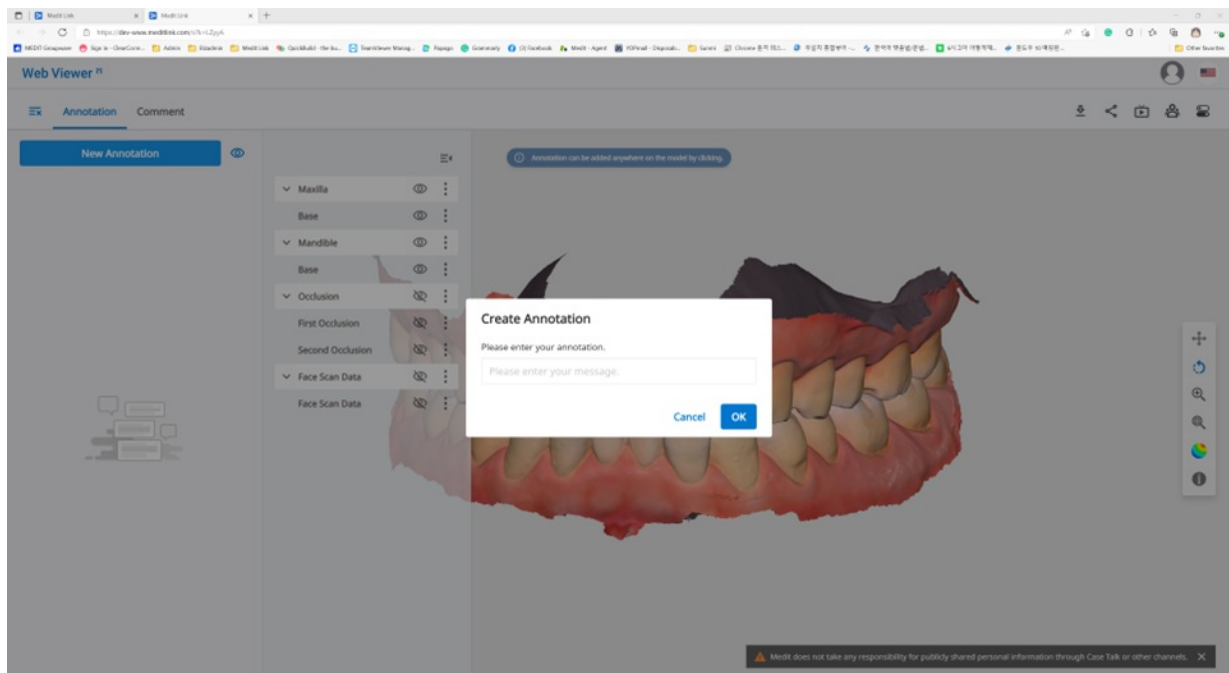

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Annotatie

1. Zoek het menu in de linkerbovenhoek en selecteer het tabblad "Annotatie". Gebruik de knop "Nieuwe annotatie" om met één klik overal op de gegevens een annotatie toe te voegen.
2. Typ het bericht en klik op "OK" om het op te slaan.

3. U kunt annotaties gebruiken als een eenvoudig communicatiemiddel. Klik op de aangemaakte annotatie om een antwoord in te voeren en druk op "Verzenden".

Opmerkingen

U kunt communiceren met gebruikers die toegang hebben tot de link via het tabblad "Opmerking" in het Web Viewer-menu.

iOpmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Opmerking

Realtime scherm delen


U kunt uw scherm in realtime delen.

iOpmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live

1. Klik op "Live" om uw Web Viewer-scherm met de verbonden gebruikers te delen.

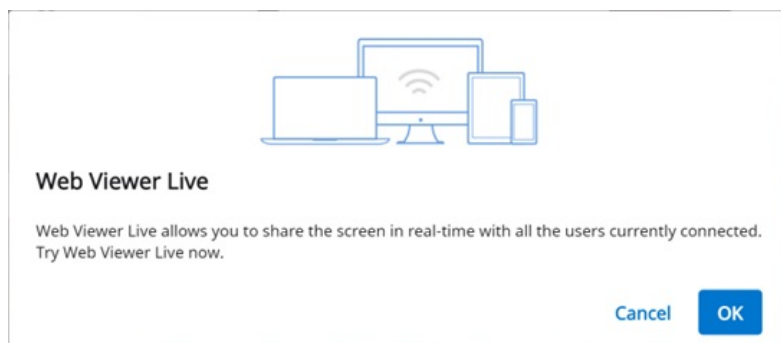



2. Klik op "OK" om uw scherm te delen.
3. Andere mensen die toegang hebben tot de link moeten het delen van het scherm accepteren.
4. Het scherm van de persoon die het scherm deelt, wordt synchroon weergegeven op het scherm van de persoon die het verzoek heeft ontvangen.

Gegevensboom



Alle gegevens worden ingedeeld en weergegeven op basis van kenmerken in de gegevensboom. U kunt gegevens tonen of verbergen, de ondoorzichtigheid aanpassen, etc.



Gegevensboom beheren

Toon/Verberg	Klik op het "oog"-pictogram om gegevens te tonen of te verbergen. Beheer de zichtbaarheid van gegevens als groep of individueel bestand.
--------------	--

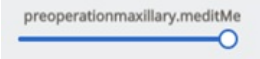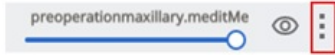Ondoorzichtigheid	Beweeg de muis over een zichtbaar element om de schuifbalk voor ondoorzichtigheid weer te geven. Beweeg de schuifbalk heen en weer om de transparantie van uw gegevens te wijzigen. 
Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevindt zich aan de rechterkant van elk element op de gegevensboom. Het bevat de volgende opties:  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens behalve de huidige gegevens. • Verbergen: Verberg de huidige gegevens. • Kopiëren: Kloon gegevens binnen het huidige dossier. • Exporteren: Sla gegevens op naar een lokale pc. • Wissen: Wis de huidige gegevens of gegevensgroep.

3D-model beheren

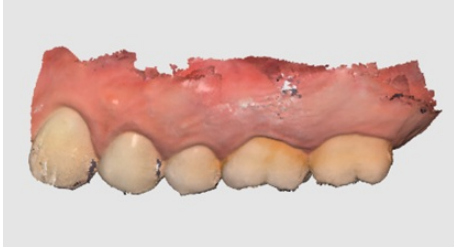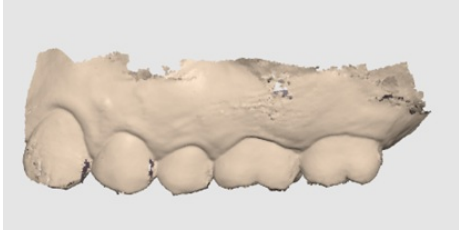	Verplaatsen	Verplaats het model.
	Roteren	Roteer het model.
	In-/uitzoomen	Zoom in en uit op het model.
	Zoom aanpassen	Plaats model in het midden van het scherm.
	Modelweergave modus	Structuur aan Toon gegevens in echte structuurkleuren. 
		Structuur uit Toon gegevens in een enkele kleur. 

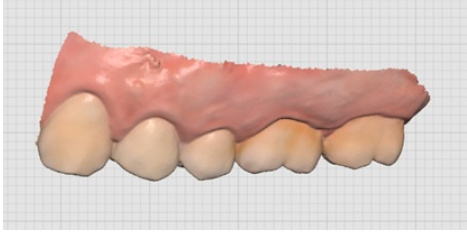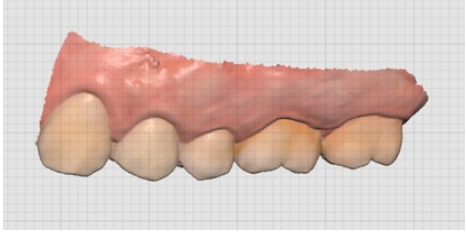	Rasterinstellingen (mm)	Raster aan	Toon het raster op de achtergrond. 
		Overlay aan	Plaats het raster over het model. 
		Raster uit	Verberg het raster.

Partners

U kunt zoeken naar potentiële partners om een samenwerking mee aan te gaan en de lijst met huidige partners en partners met contracten bekijken.


Opmerking

Diensten die gebruik maken van Google Maps zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

Zoek naar partners

U kunt Medit Link-gebruikers zoeken op basis van hun bedrijfsnaam en/of adres.

In de zoekresultaten kunt u een samenwerkingsverzoek sturen naar een organisatie waarmee u zou willen samenwerken.

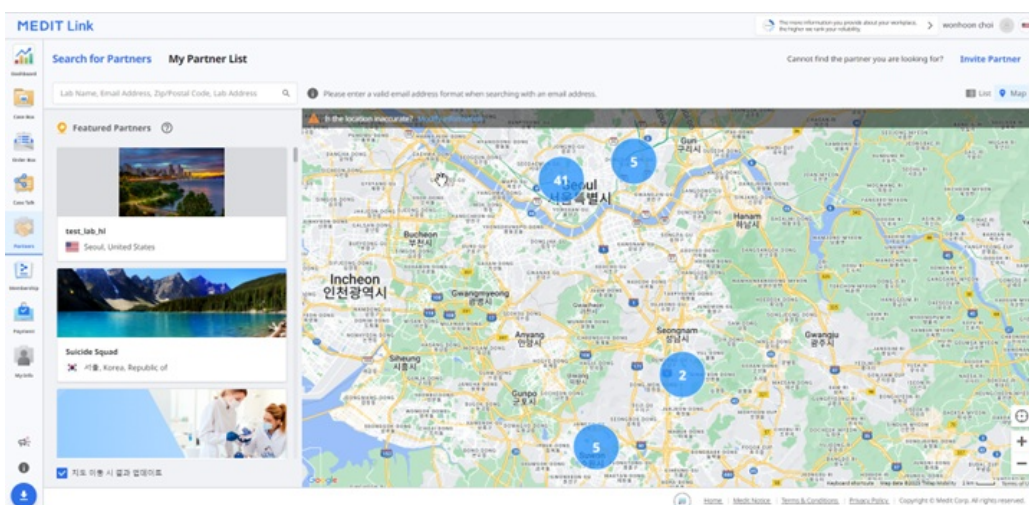


Mijn partnerlijst

U kunt uw huidige samenwerkingsverbanden en contracten met al uw bestaande partnerbedrijven bekijken in de sectie "Mijn partnerlijst".

Wat is het verschil tussen een contract en een samenwerkingsverband?

Zodra u met een bedrijf gaat samenwerken, kunt u een contract met die organisatie aanvragen.

- Als uw partner uw contractaanvraag aanvaardt, kunt u overgaan tot betaling van de geplaatste orders.

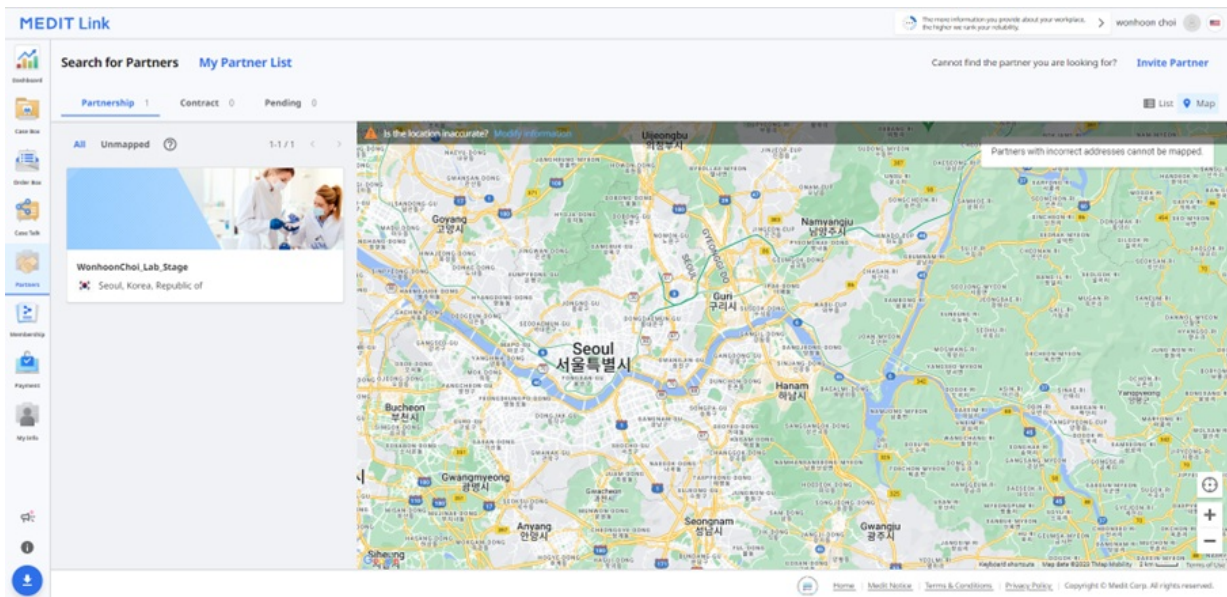

iOpmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Contract

Partner uitnodigen

Als u met een organisatie wilt samenwerken, kunt u deze uitnodigen om lid te worden van Medit Link. Het samenwerkingsverband wordt automatisch gevormd zodra de uitnodiging wordt geaccepteerd.

1. Klik op "Partner uitnodigen" linksboven in uw scherm.
2. Voer het e-mailadres in van de verkoper met wie u wilt samenwerken en stuur een uitnodiging met een verzoek tot samenwerking.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Zodra de uitgenodigde organisatie de uitnodiging accepteert en zich aanmeldt voor Medit Link, wordt het samenwerkingsverband automatisch tot stand gebracht.

Lidmaatschap

Het lidmaatschapsbeleid van Medit Link heeft als doel om een uitgebreidere digitale omgeving op te zetten, waarbij geleidelijk verschillende diensten worden aangeboden via het cloudplatform.

Met ons nieuwe lidmaatschapsbeleid streven we ernaar onze klanten een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden.

Er zijn twee lidmaatschapsplannen beschikbaar:

Standaard

- Gratis standaardplan voor alle aangemelde gebruikers
- 1 GB cloudopslag
- Voor nieuwe gebruikers

Premium

- Betaald plan
- 10 TB cloudopslag
- Voor gebruikers met veel dossiers en verschillende soorten gegevens
- Een maand gratis uitproberen

	Standaard	Premium
Cloudopslag	1 GB	10 TB
Maandelijks kosten	Gratis	\$0,99/maand
* Cloudopslag berekent de ruimte die ruwe gegevens innemen niet.		

Opmerking

De lidmaatschapsplannen zijn beschikbaar voor Medit Link China. U kunt het Premium-plan gratis gebruiken tot aan de officiële release van de functie.

Lidmaatschap

The screenshot displays the Medit Link web application. The main content area is titled 'My Plan' and shows the 'Standard' plan, which is 'Free'. It lists three benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. To the right, the 'Cloud Storage' section features a donut chart indicating 353.21 MB out of 1 GB is used. Below the chart, there are two sections for managing storage: 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB), each with a checkbox and a description. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'.

Mijn plan

Aan de linkerkant kunt u zien welk lidmaatschapsplan u momenteel gebruikt. Hier kunt u ook te allen tijde uw lidmaatschapsstatus wijzigen.

My Plan



Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

Cloudopslag


In het rechtergedeelte kunt u uw cloudopslag beheren.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago

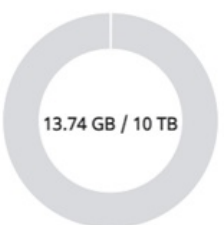

13.74 GB / 10 TB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐	Raw Data Remove raw data. Raw data does not take up space in cloud storage.	147.52 GB
☐	Result Files & Attachments Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.	13.74 GB


Periode instellen	Stel de specifieke periode in om gegevens te verwijderen die binnen dat tijdsbestek zijn aangemaakt. • Alle: Bekijk alle bestanden. • 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt. • 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt. • 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt. • 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.
Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslagruimte in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. Indien nodig kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren, bijvoorbeeld door ze te verwijderen om de privacy van de patiënt te beschermen.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloud. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om ruimte vrij te maken.

Abonneren

Als u momenteel het Standaardplan of het Premiumplan met een actiecode gebruikt, dan kunt u zich abonneren op het Premiumlidmaatschap.

De betaling zal worden verwerkt via Stripe (www.stripe.com).

1. Klik op de knop "Abonneren".

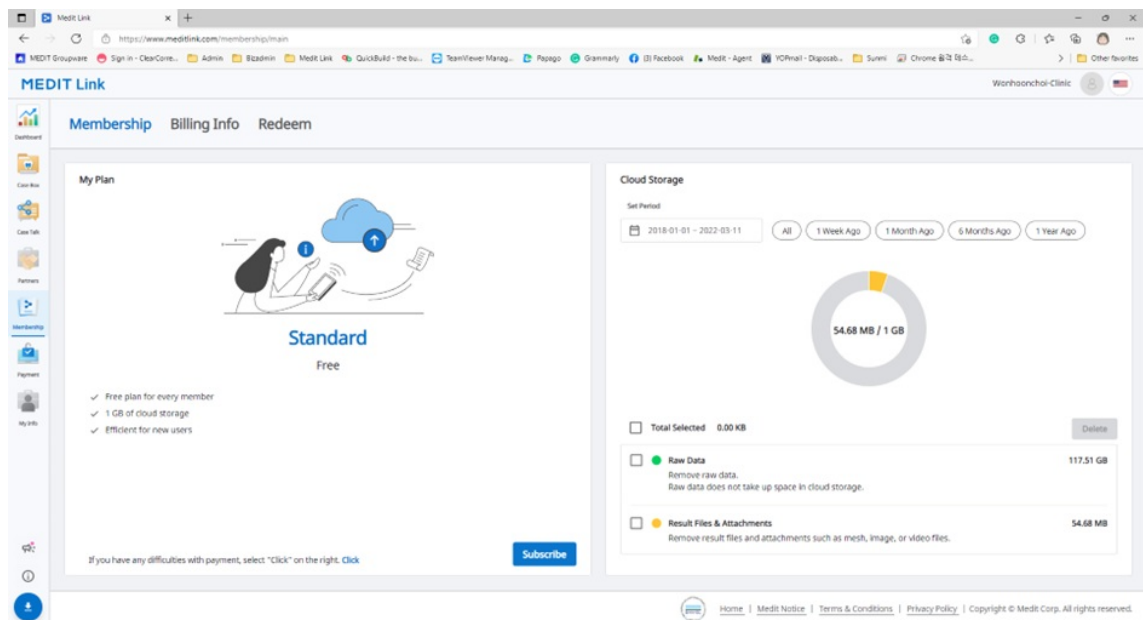

2. Controleer de beschrijving van het Premium plan en klik opnieuw op "Abonneren".

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel **Subscribe**

3. Controleer de prijs en voorwaarden en voer de informatie in die nodig is voor de betaling. Klik vervolgens op "Abonneren".

← **MEDIT Link** TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
👉 1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by [stripe](#) | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time ⓘ

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. De betaling kan enkele seconden in beslag nemen. Zodra de betaling is voltooid, ziet u een bevestigingsbericht.

Subscribe Membership



Payment Successful.

[Invoice](#)

[Close](#)

Opzeggen


U kunt het lidmaatschap op elk moment opzeggen. Na het opzeggen kunt u het Premium lidmaatschap nog steeds gebruiken voor de resterende dagen van die betaalde maand. Uw plan wordt vanaf de volgende betaaldag gewijzigd naar Standaard, en de cloudopslag wordt beperkt tot 1 GB. Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

1. Klik op "Opzeggen".

The screenshot displays the MEDIT Link web application. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The left sidebar contains various icons for navigation. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'My Plan', shows the 'Premium' plan at 0.99\$ USD / Monthly. It lists benefits: a subscription plan, 10TB cloud storage, efficiency for users with many cases, and a one-month free trial after subscription. The next scheduled payment date is 2021-09-10. A red box highlights the 'Unsubscribe' button. The right section, titled 'Cloud Storage', shows a progress ring for 0.00 KB / 10 TB. Below this, there are checkboxes for 'Raw Scan Files' and 'Result & Attachment', each with a description and a '0.00 KB' status.

2. Klik op "Abonnement opzeggen".

Cancel Subscription

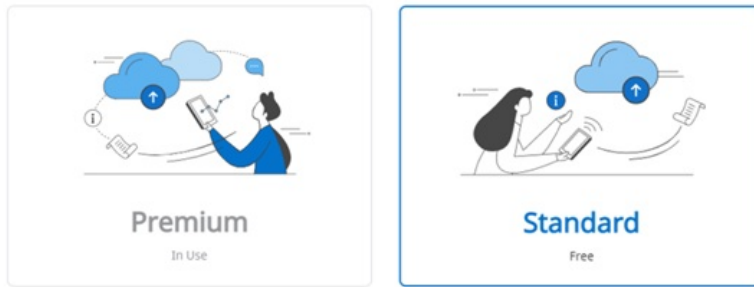


3. Om te bevestigen dat u het abonnement wilt opzeggen, klikt u in het nieuwe pop-upvenster nogmaals op "Abonnement opzeggen".

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. Uw abonnement is opgezegd.
5. Uw plan wordt vanaf de volgende betaaldag gewijzigd naar Standaard, en de cloudopslag wordt beperkt tot 1 GB. Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

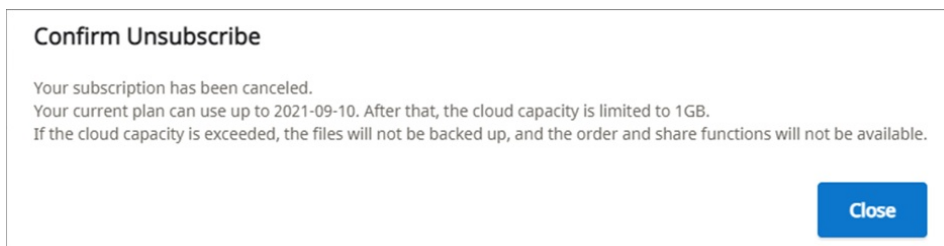

Betalingsinformatie

U kunt de betalingsgeschiedenis voor abonnementen bekijken, inclusief een factuur voor elke betaling. U kunt ook de betaalmethode toevoegen of wijzigen die zal worden toegepast vanaf de volgende geplande betaling.

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface with the 'Billing Info' tab selected. The page displays membership details and a billing history table.

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Een betaalmethode toevoegen

1. Klik op "Betaalmethode wijzigen".

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangle.

2. Klik op "Betaalmethode toevoegen".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Voer de vereiste informatie in en klik op "Toevoegen".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. De nieuw toegevoegde betaalmethode wordt als standaard ingesteld en wordt voor de volgende betaling gebruikt.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Een betaalmethode wijzigen

1. Klik op het uitgebreide menupictogram naast de betaalmethode die u wilt wijzigen in het dialoogvenster voor facturering.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Klik op "Standaard maken" om de geselecteerde kaart als standaard betaalmethode in te stellen.

The screenshot shows a 'Billing' page with three main sections: 'CURRENT PLANS', 'PAYMENT METHODS', and 'BILLING INFORMATION'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. The 'PAYMENT METHODS' section lists two Visa cards. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. A red box highlights the 'Make default' and 'Delete' options for the second card. Below the cards is a '+ Add payment method' link. The 'BILLING INFORMATION' section is partially visible at the bottom.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

Inwisselen

Registreer de actiecode die als onderdeel van de promotie wordt verstrekt. U kunt het Premium lidmaatschap samen met de actiecode gebruiken.

Registreer actiecode

1. Voer de actiecode in en klik op "Registreren".

2. Lees de mededeling en kies "Registreren" of "Toepassen" in het pop-up venster.
 - **Registreren:** Registreer de actiecode. U kunt de code na registratie activeren en later gebruiken.
 - **Toepassen:** Registreer en activeer de code. De promotiekorting wordt onmiddellijk toegepast.

Activeer actiecode

U kunt meerdere actiecodes registreren, maar u moet de code die u wilt gebruiken activeren.

1. Klik op de knop "Activeren" naast de code die u wilt gebruiken.
 Als er geen code is met de status "Actief", wordt de code die u kiest onmiddellijk toegepast. Als er al code is geactiveerd, verandert de status in "Wachtend" en wordt de door u gekozen code in plaats daarvan gebruikt. Wanneer de huidige actiecode verloopt, wordt de wachtende code automatisch opnieuw geactiveerd.
2. **iOpmerking**
 Slechts één code kan de status "Wachtend" hebben.

Medit Link

[Sign in - ClearCore...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome](#)
[로그인](#)
[로그아웃](#)

MEDIT Link

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Betaling

!Opmerking


De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Betaling

Betalingsdetails (Clinic- en Lab-accounts)

U kunt de betalings- en transactiegeschiedenis tussen u en uw partners controleren via de pagina "Betalingsdetails".

Informatie over de betaalrekening (alleen Lab-account)

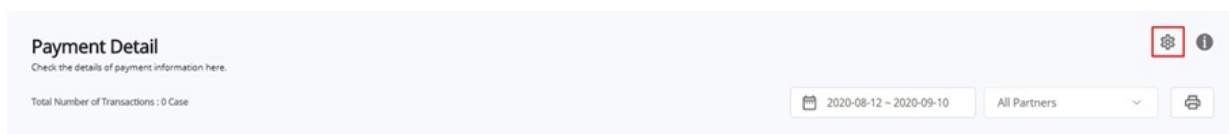

Deze functie is alleen beschikbaar voor het account van de labbeheerder, zodat deze informatie kan invoeren om door uw partners te worden betaald.

- U dient de gegevens van uw betaalrekening in te voeren zodat uw partners orders kunnen plaatsen via het online betalingssysteem.

!Opmerking

Als u een land selecteert waar Stripe wordt ondersteund, wordt u naar Stripe geleid door op een knop te klikken om u aan te melden voor Stripe.

Als u Zuid-Korea selecteert, kunt u een lokaal bankrekeningnummer invoeren om de betaling te ontvangen, waarna KCP uw betaling zal verwerken.

Mijn info

Mijn account

Hier kunt u de informatie die u tijdens de registratie heeft verstrekt bekijken en wijzigen, en uw lidmaatschapsstatus controleren.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

2. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Mijn organisatie (alleen beheerdersaccount)

Hier kunt u de informatie over uw organisatie bekijken en wijzigen. Dit gedeelte is alleen beschikbaar voor beheerdersaccounts.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[Address Information](#) [Organization Information](#) [Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.
1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of ▼

State/Province *
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Mijn scanner

U kunt de informatie over het aangesloten apparaat voor het account controleren.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Mijn prijslijst (alleen lab-beheerdersaccount)

U kunt de producten invoeren die uw laboratorium aanbiedt en de prijsinformatie voor elk product.

My Account My Organization My Scanner My Price List ⓘ

Teeth Arch
AED (€)

☒ All (99/557)
☐ Inlay (8/12)
☐ Onlay (8/12)
☐ Coping (10/17)
☐ Denture Coping (5/5)
☐ Crown (15/26)
☐ Pontic (23/36)
☐ Post & Core (3/4)
☐ Veneer (8/11)
☐ Implant Crown (12/53)
☐ Custom Abutment (2/3)
☐ Surgical Guide (1/1)
☐ Offset Substructure (4/5)
☐ Partial Denture (8/7)
☐ Diagnostic Wax-Up (8/1)
☐ Custom Abutment + Implant Crown (0/159)
☐ Custom Abutment + Coping (0/45)
☐ Post & Core + Crown (0/100)
☐ Post & Core + Coping (0/60)

☐	Name	Type	Method	Material	Price
☒	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	56.03
☒	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
☒	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
☒	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

ⓘOpmerking

- Zodra u een contract met een partner sluit, kan uw partner uw producten bestellen aan de hand van deze productlijst en bijbehorende prijzen.
- Als u alleen een samenwerkingsverband met uw partner heeft, ondersteunt Medit Link geen orders die prijsinformatie vereisen.

Ander menu

Mededeling en update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit informatie

Ontvang allerlei informatie over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals Medit Academy, Medit Academy YouTube en Medit Hulpcentrum.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Download Medit Link App

U kunt de laatste versie van het installatieprogramma vanaf het web downloaden. Dit menu is nuttig wanneer u het installatieprogramma uit het productpakket kwijt bent, of wanneer u een verouderd installatieprogramma hebt.

53

iOpmerking

Medit Link wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een internetverbinding heeft.

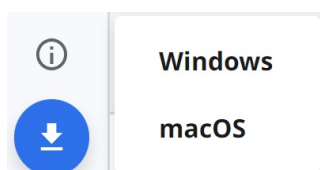

Overzicht

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 시뮬한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Form Completed	Formosa Teeth 18 30%	test		2022-09-22 오후 11:16	2022-09-22 오후 11:16

1	Titelbalk	Raadpleeg de Medit Link App > Titelbalk voor gedetailleerde informatie.
2	Menu	Raadpleeg Medit Link App > Menu voor gedetailleerde informatie.
3	Instrumenten en functies	Raadpleeg Medit Link App > Bestandenbekijker en Medit Link App > Weergaveopties voor gedetailleerde informatie.
4	Dossierlijst	Raadpleeg Medit Link App > Filteren en zoeken voor gedetailleerde informatie.

Box overzicht

	Workflow	Clinic Account	Lab Account
Stap 1	Dossiers aanmaken	Case Box: Maak gemakkelijk dossiers aan en doorzoek en bekijk deze met behulp van verschillende filter- en zoekopties. Met het aangemaakte dossier kunt u direct koppelen met scanprogramma's en CAD-programma's om eraan te werken.	
Stap 2	Dossiers bestellen/beheren	Order Box: Beheer bestelde dossiers. Er zijn functies voor het beheer van het proces van bestelling tot voltooiing van dossiers.	In Box: Beheer dossiers van ontvangen orders. Er zijn functies voor het beheer van het proces van acceptatie, afwijzing, verzending en voltooiing van dossiers.


Stap 3	Werken aan scannen/CAD		Work Box: Beheer dossiers die zijn doorgestuurd vanuit In Box of die u zelf heeft aangemaakt. U kunt direct koppelen met scanprogramma's en CAD-programma's om eraan te werken.
Stap 4	Dossiers delen	Case Talk: Deel de aangemaakte dossiers met beperkingen, zonder beperkingen, met specifieke personen of andere geregistreerde leden van Medit Link.	
Stap 5	Aanvullend of extra werk	App Box: Gebruik verschillende apps als aanvulling op uw digitale tandheelkundige workflow. U kunt Medit of apps van derden downloaden en installeren.	
Stap 6	Dossiers verwijderen/herstellen	Trash Box: Bekijk, herstel of verwijder dossiers definitief vanuit de Trash Box.	

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare Boxes in elk type clinic en laboratorium account.

Type account		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Clinic Accounts	Beheerder	O	O	X	X	O	O	O
	Lid	O	X	X	X	O	O * Alleen herstelfunctie	O
Lab Accounts	Beheerder	X	X	O	O	O	O	O
	Lid	X	X	X	O	O	O * Alleen herstelfunctie	O

Titelbalk

De titelbalk biedt snelle toegang tot functies als netwerkstatus, cloudsynchronisatie en meldingen.

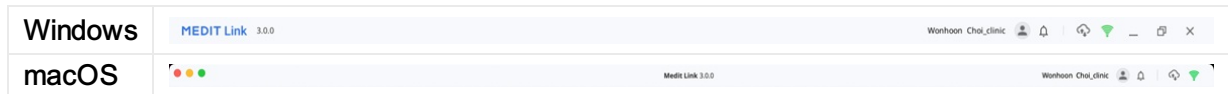

Mijn informatie

Mijn informatie bevat basisinformatie over de gebruiker zoals profielafbeelding, organisatienaam, e-mailadres en gebruikersnaam.

Het biedt ook de mogelijkheid om uit te loggen en een snelkoppeling naar de "Mijn Account" pagina in Medit Link Web.

The screenshot shows a 'My Information' page. It features a profile picture placeholder (labeled 1) and three text input fields: 'Organization Name' with the value 'Wonhoonchoi_Clinic_Dev' (labeled 2), 'Email Address' with 'wonhoon.choi@medit.com', and 'Name' with 'Wonhoonchoi_Clinic'. At the bottom right, there are three buttons: 'Close', 'Log Out' (labeled 3), and 'Edit >' (labeled 4).

1	Toon de profielafbeelding.
2	Toon de organisatienaam, het e-mailadres en de gebruikersnaam.
3	Log uit bij het huidige account.
4	Ga naar Medit Link Web terwijl u bent ingelogd met het huidige account. U kunt de accountgegevens die u heeft ingevoerd bij uw aanmelding bekijken, bewerken en beheren.

Meldingen

Bekijk meldingen in verband met contracten, orders en het werkproces.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Vink het vakje aan om alleen de ongelezen berichten te tonen. |
| 2 | Klik op een melding om onmiddellijk naar het betreffende dossier of de betreffende webpagina te gaan. |

Dossier synchronisatiebeheerder

Dossier synchronisatiebeheerder helpt u bij het uploaden en downloaden van de dossiers in Medit Link. U kunt meerdere dossiers naar de cloud uploaden of op uw lokale computer downloaden.

[illegible]

Uploaden

Totaal dossiers / Geselecteerde dossiers	Controleer het aantal van alle/geselecteerde dossiers die moeten worden geupload.
Alles uploaden	Upload alle dossiers naar de cloud.
Alles annuleren	Annuleer alle uploadverzoeken.
	Upload het dossier naar de cloud.
	Uploaden van het dossier annuleren.
	Probeer het dossier opnieuw te uploaden.

Downloaden

Totaal dossiers / Geselecteerde dossiers	Controleer het aantal van alle/geselecteerde dossiers die moeten worden gedownload.
Alles downloaden	Download alle dossiers naar de computer.
Alles annuleren	Annuleer alle downloadverzoeken.
	Download het dossier naar de computer.

	Annuleer het downloaden van het dossier.
	Probeer het dossier opnieuw te downloaden.

Netwerkstatus

Met Medit Link kunt u alle functies probleemloos gebruiken wanneer u verbonden bent met een netwerk.

Om u te helpen de status van uw netwerkverbinding in realtime te controleren, wordt in de titelbalk het pictogram voor de netwerkstatus weergegeven.

Als de netwerkverbinding niet goed is, kunt u de volgende beperkingen ondervinden:

- Sommige functies, zoals een dossier bestellen, een dossier aanmaken, delen via Case Talk en cloudsynchronisatie, worden beperkt.
- De algemene prestaties van de dienst kunnen afnemen door de impact van de netwerkomgeving.

In dit geval kunt u overschakelen naar de offline modus om basistaken uit te voeren en vervolgens de functies gebruiken die internet vereisen zodra u weer verbinding heeft.

!Opmerking

Het netwerksymbool geeft de reactiesnelheid aan tussen het huidige gebied en AWS (Amazon Web Service). Het geeft niet de snelheid van uw netwerkverbinding weer, dus soms kan het de status als slecht of zwak weergeven, zelfs als uw netwerksnelheid snel genoeg is.


Als het andere proces hetzelfde netwerk gebruikt, kan de snelheid laag of slecht worden weergegeven en kunnen de algemene prestaties van Medit Link slecht zijn. In dit geval wordt aangeraden dat u het netwerk niet met andere processen deelt.

De functie "Ruwe gegevens uploaden" neemt bijvoorbeeld een groot deel van het netwerkproces in beslag. Als het symbool een matige of slechte status aangeeft, ga dan naar Instellingen > Ruwe gegevens uploaden en schakel "Automatisch uploaden" uit.

Menu

Dashborad


U kunt de statistieken van alle werkzaamheden op Medit Link bekijken in de vorm van grafieken en overzichten, zowel in de Medit Link App als op het web.

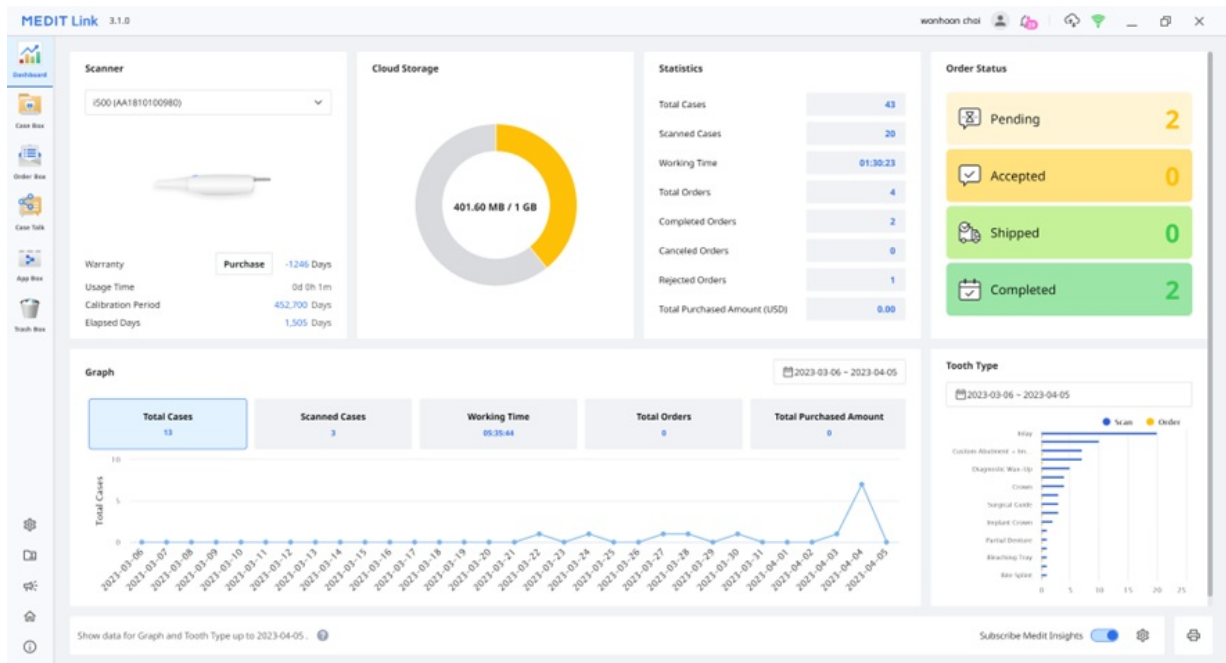

Opmerking

Raadpleeg het [Medit Link Web > Dashboard](#) voor meer informatie over het dashboard en Medit Insights.

Case Box/Work Box

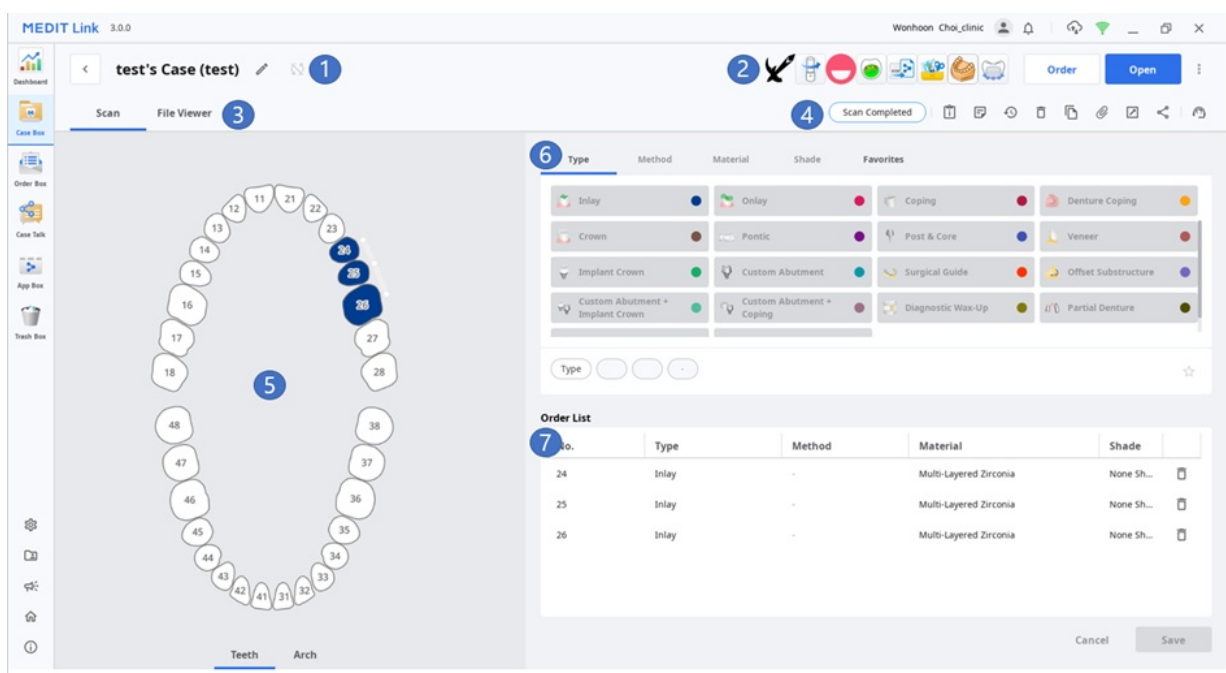

1	Toon de dossiernamen en de patiëntnamen.
2	Belangrijkste beschikbare functies: Order/Scan(open)/Orderknoppen en App-pictogrammen.
3	Toon beschikbare tabbladen: Formulier, CAD en Bestandenbekijker.
4	Toon functies voor het beheren van dossiers en bestanden:
5	Toon de gebruikersinterface voor de formulierregistratie voor het geselecteerde CAD-programma.
6	Geef de gebruikers informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die beschikbaar zijn voor het geselecteerde tandnummer, zodat ze een keuze kunnen maken.
7	Toon informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die zijn toegepast op de geselecteerde tanden.

Tabbladen in Case Box/Work Box

Formulier	CAD	Bestandenbekijker
Het tabblad Formulier bevat een gebruikersinterface waarop basisinformatie voor het scannen kan worden ingevoerd, zoals het type, de methode en het materiaal voor de tandnummers, evenals de scanopties. De informatie die u invoert, wordt doorgegeven aan het verbonden scanprogramma en gebruikt als orderinformatie wanneer u een order plaatst bij uw partner.	Het tabblad CAD bevat een gebruikersinterface voor het instellen van CAD-opties. De informatie die u instelt, wordt doorgegeven aan het verbonden CAD-programma.	Bekijk resultaatbestanden die door scanprogramma's en CAD zijn gegenereerd. De bestandenbekijker toont en beheert de verkregen of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Functies in Case Box/Work Box

De volgende functies zijn beschikbaar in Case Box/Work Box.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.
	Ga naar details	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.

	Dossiergeschiedenis	Biedt gedetailleerde informatie over de dossiergeschiedenis. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Wissen	Wis het dossier. U kunt bestelde dossiers of offline aangemaakte dossiers niet wissen.
	Kopieer	Maak een kopie van het huidige dossier in Case Box. Alle gegevens worden gekopieerd naar het gekloonde dossier. Deze functie is handig bij het kopiëren van behandelingsinformatie voor dezelfde patiënt of bij het maken van een extra order met dezelfde informatie of bestanden.
	Bijvoegen	Voeg bestanden bij in verschillende formaten.
	Exporteren	Exporteer scan- of CAD-resultaatbestanden naar de lokale pc. Bij het exporteren van bestanden kunt u het gewenste bestandsformaat kiezen. De geëxporteerde bestanden kunnen worden gebruikt voor verdere verwerking in CAD- en CAM-software.
	Delen	Maak een link aan om te delen. Gebruikers die de gedeelde link hebben, hebben toegang tot de 3D-gegevens in een webbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari, zonder dat er extra programma's geïnstalleerd hoeven te worden. U kunt de link met iedereen of alleen met specifieke personen delen. Er kan een pincode of een vervaldatum voor links worden ingesteld om privégegevens te beveiligen.
	Verstuur ondersteuningsverzoek	Ga naar het Medit Hulpcentrum om een ondersteuningsverzoek in te dienen.

Order Box/In Box

1	Toon de dossiernaam en de patiëntnaam.
2	Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen).
3	Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbekijker
4	Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie & tags, etc.
5	Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum en de notitie & tags.
6	Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus.

Tabbladen in Order Box/In Box

Order	Bestandenbekijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals ordernummer, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De bestandenweergever toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.


De gebruiker kan via Case Talk in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

!Opmerking

Case Talk vereist een internetverbinding.

⚠ Let op

De uit de Trash Box verwijderde gegevens worden permanent van uw computer en de server verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

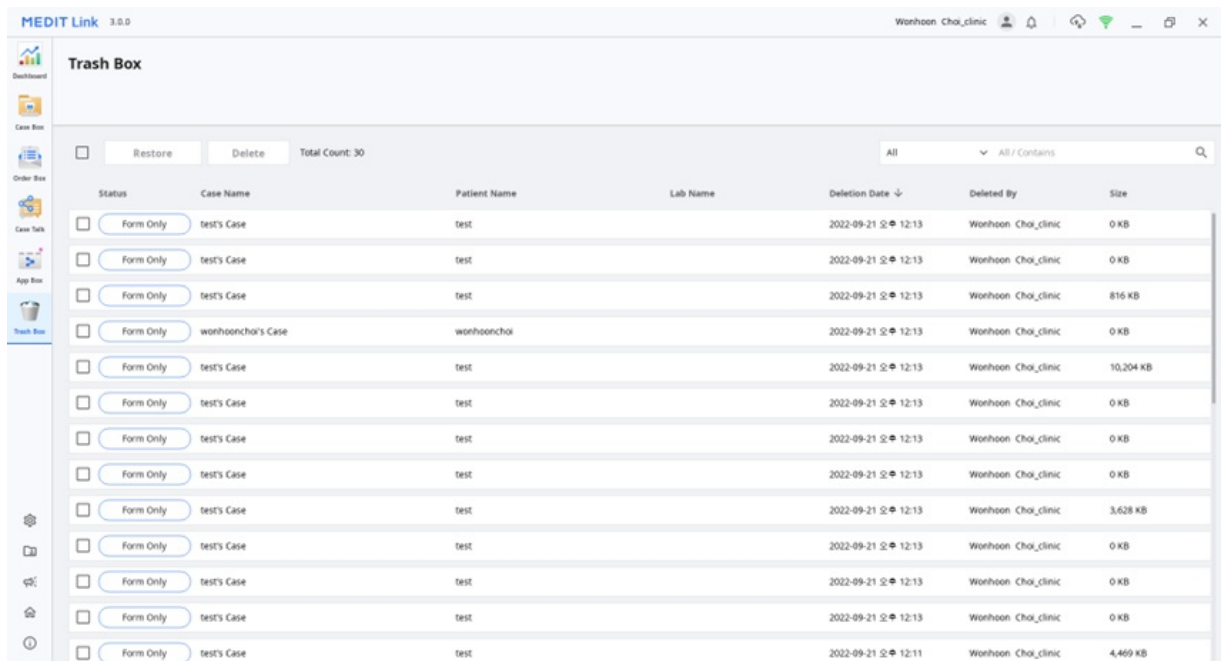


Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

Instellingen

Raadpleeg de [Medit Link App > Instellingen](#) voor gedetailleerde informatie over het venster Instellingen.

Patiëntbeheer

In het venster Patiëntbeheer kunt u patiënten toevoegen, bewerken, verwijderen of samenvoegen.

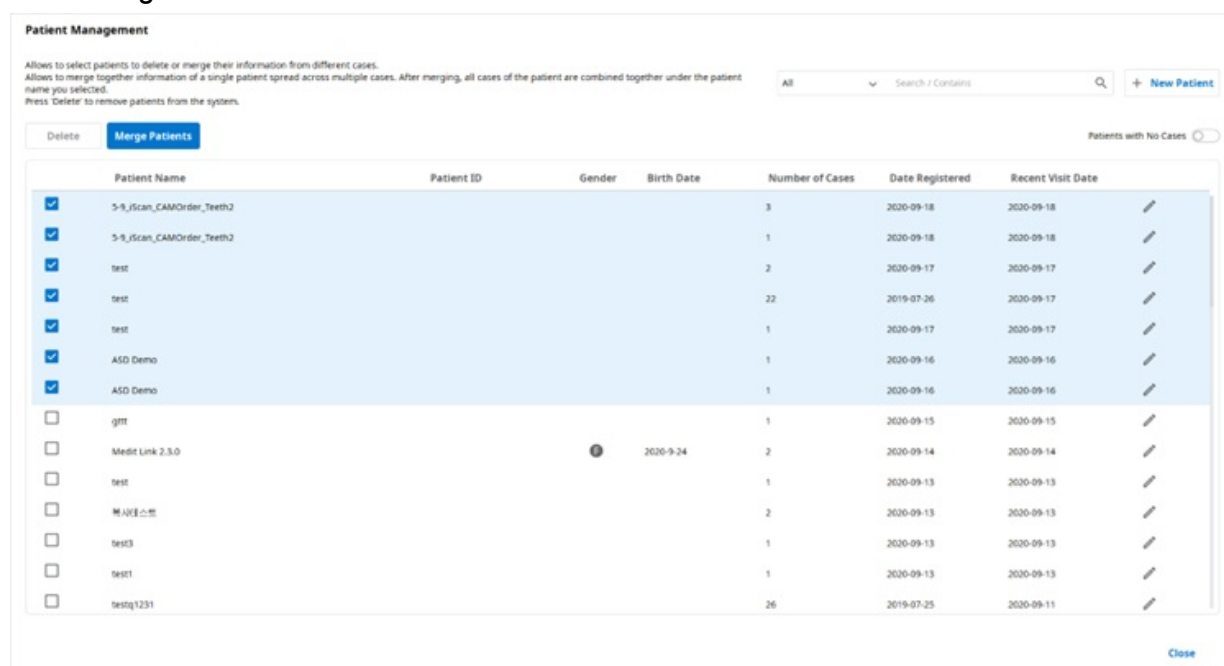

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒ 3-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18
☒ 3-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18
☒ test				2	2020-09-17	2020-09-17
☒ test				22	2019-07-26	2020-09-17
☒ test				1	2020-09-17	2020-09-17
☒ ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
☒ ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16
☐ gntt				1	2020-09-15	2020-09-15
☐ Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14
☐ test				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ 테스트				2	2020-09-13	2020-09-13
☐ test3				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ test1				1	2020-09-13	2020-09-13
☐ test1231				26	2019-07-25	2020-09-11

Nieuwe patiënt toevoegen

1. Klik op "Nieuwe patiënt".

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Vul de vereiste informatie in het dialoogvenster Nieuwe patiënt in en klik op "Opslaan".

Patiënt wissen

Opmerking

U kunt een patiënt alleen wissen als er geen dossiers voor de patiënt zijn.

1. Selecteer de patiënt die u uit de lijst wilt wissen.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press "Delete" to remove patients from the system.

All Search & Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.J. Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scrubody				0	2019-08-28	2019-08-26	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	sulkyadrlkf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. Klik op "Wissen".

Patiënten samenvoegen

U kunt alle dossiers van meerdere patiënten samenvoegen tot één patiënt.

1. Selecteer de patiënten die u wilt samenvoegen uit de lijst.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

Search / Contains

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				8	2020-09-18	2020-09-18	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	grrr				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1231				26	2019-07-26	2020-09-11	

2. Klik op "Patiënten samenvoegen".
3. Selecteer de doelpatiënt waarvoor u alle dossiers wilt samenvoegen.
4. Alle dossiers worden samengevoegd tot één doelpatiënt en de patiëntinformatie van de doelpatiënt wordt behouden.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

5. Klik op "Toepassen" om door te gaan met het samenvoegen.

Mededeling en update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Ga naar Medit Link Web

U wordt doorgestuurd naar Medit Link Web onder de account waarmee u momenteel bent ingelogd.

Medit informatie

Ontvang allerlei informatie over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals Medit Academy, Medit Academy YouTube en Medit Hulpcentrum.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



Instellingen

Algemeen

Biedt opties voor de algemene systeemopstelling.

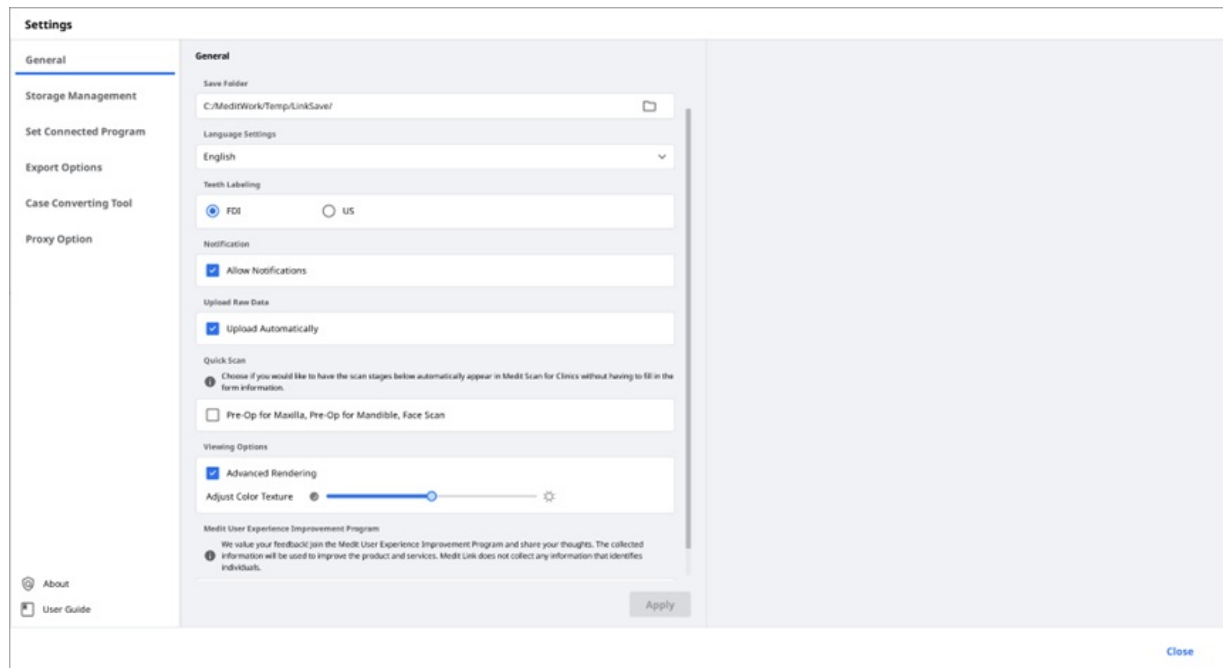

Opslagmap	Geef een map op om de gegevensresultaten op te slaan die door Medit Link en verbonden programma's worden gegenereerd.	
Taalinstellingen	Kies de taal voor het programma.	
Tanden labelen	Selecteer een etiketteringssysteem voor tanden tussen FDI en VS.	
Meldingen	Indien aangevinkt, ontvangt u meldingen voor programma-updates.	
Ruwe gegevens uploaden	Als deze optie is aangevinkt, worden de ruwe gegevens automatisch naar de cloud geüpload. Dit helpt bij het maken van een back-up van de originele gegevens, zodat u naadloos kunt scannen wanneer u Medit Link gebruikt met hetzelfde account op een andere computer. Het maken van een back-up van de originele gegevens in de cloud is alleen van toepassing op gegevens die zijn verkregen met Medit Scan for Clinics.	
Snelle scan	Kies of u wilt dat de onderstaande scanfasen automatisch verschijnen in Medit Scan for Clinics, zonder dat u de formulierinformatie hoeft in te vullen. • Pre-operatie voor bovenkaak • Pre-operatie voor onderkaak • Gezichtsscan	
Weergaveopties	Geavanceerde rendering	Indien deze optie is aangevinkt, wordt het 3D-model levendiger en realistischer weergegeven.
	Kleurstructuur aanpassen	Pas de helderheid van het 3D-model aan. *De resulterende kleuren kunnen enigszins afwijken van die in Medit Link wanneer u dezelfde gegevens opent met andere software.


Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma

Neem deel aan het Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma.

- Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze producten en diensten te verbeteren.
- We verzamelen geen informatie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd.

Opslagbeheer

Controleer en beheer de lokale en cloudopslagruimte.

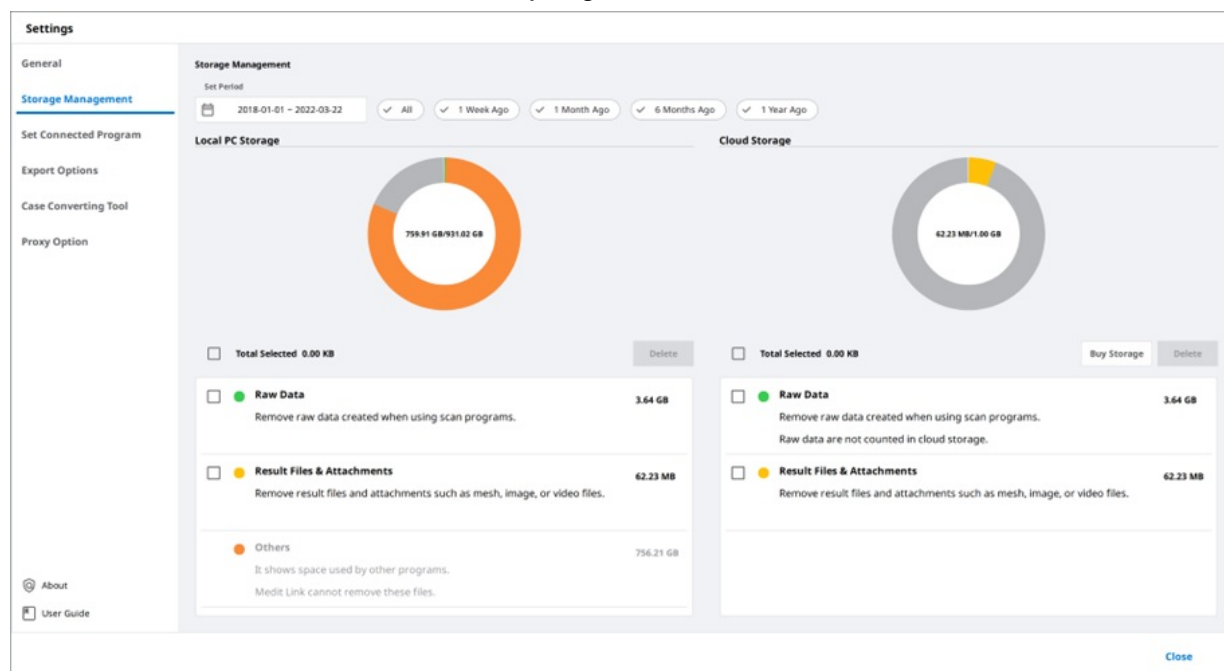

Stel periode in

Stel de specifieke periode in voor het verwijderen van gegevens die zijn aangemaakt binnen het tijdsbestek hieronder.

- Alle: Bekijk alle bestanden.
- 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt.
- 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt.
- 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt.
- 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.

Lokale opslag

Beheer de opslagruimte van de computer.

Ruwe gegevens	Verwijder de geselecteerde ruwe gegevens van uw computer. Als de ruwe gegevens al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.
Resultaat en bijlage	Verwijder de resultaat- en bijlagebestanden van de pc, zoals mesh, afbeeldingen en video's. Als deze bestanden al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.

Anderen	Bekijk de bestanden die worden gebruikt om het systeem en andere programma's te bedienen. Het toont de opslag van uw computer. U kunt deze bestanden niet in Medit Link wissen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden van de computer.


Cloudopslag

Beheer de cloudopslagruimte.

Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslag in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. U kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren indien nodig. Verwijder ze bijvoorbeeld om de privégegevens van de patiënt te beschermen, etc.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloudopslag. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Koop opslag	Als u een standaardplan heeft, overweeg dan om op Premium over te stappen voor meer cloudopslag.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om opslagruimte vrij te maken.

Stel verbonden programma in

Beheer de programma's die integratie in Medit Link ondersteunen.

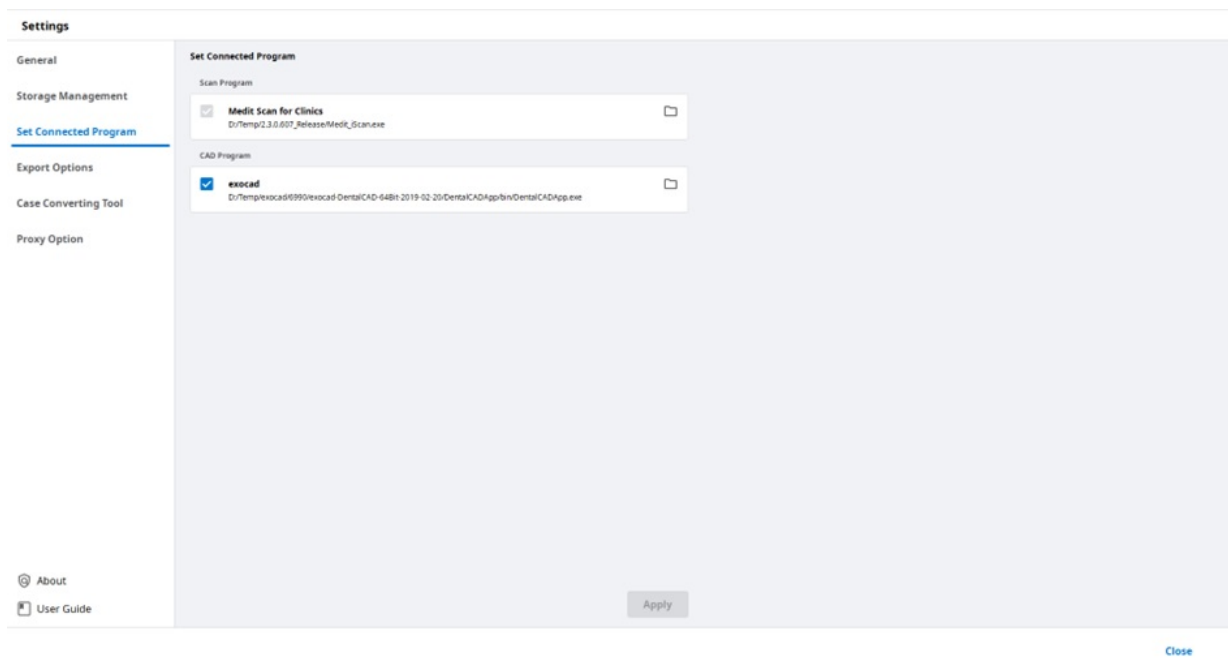

U kunt de volgende programma's verbinden:

	Clinic Account	Lab Account
Scanprogramma	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CAD-programma	exocad	exocad

!Opmerking

De volgende diensten kunnen niet worden geïntegreerd in Medit Link voor Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Export opties

Stel in hoe bestanden uit Medit Link moeten worden geëxporteerd.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

CAD Type: Maestro

Export Files To: C:/Users/Medit-Worhoonchoi/Desktop/test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

Compress & Combine

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

Creation Date Scanning Date Order Date

Patient Name Case Name Partner Name

Patient ID Order ID

Folder Name

Case Name

Rule for File Name

Creation Date Scanning Date Order Date

Patient Name Case Name Partner Name

Patient ID Order ID

File Name

Case Name

Apply

Close

CAD-type	Kies het CAD-programma dat u wilt gebruiken voor het ontwerpen. Het programma past de resultaten automatisch aan op basis van uw keuze, waardoor u zonder extra asuitlijning verder kunt gaan met het ontwerp.
Exporteer bestanden naar	Geef het pad op waar u de resultaten wilt opslaan.
Meshformaat	Specificeer het formaat van het afgewerkte mesh-bestand.
Afbeeldingsformaat	Geeft het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Comprimeren en samenvoegen	Bestanden comprimeren: Comprimeer alle resultaten tot één bestand. Combineer individuele mesh: Combineer alle resultaten voor de bovenkaak of onderkaak in één bestand. Wanneer u bepaalde programma's gebruikt die niet in staat zijn om meerdere bestanden te importeren en te verwerken, kunt u deze bestanden samenvoegen tot één bestand, zodat u ermee kunt werken in die programma's.
Opties wanneer dezelfde map of hetzelfde bestand al bestaat.	Kies de standaardactie voor dossiers waarin dezelfde map of bestandsnaam bestaat in het doelpad. • Altijd vragen bij exporteren. • Exporteer een nieuw bestand en overschrijf de bestaande bestanden. Het huidige opgeslagen bestand gaat verloren. • Maak een map aan en exporteer de bestanden

Regel voor mapnaam	Stel regels op voor het benoemen van mappen bij het exporteren van bestanden. De regels die u instelt, worden toegepast op de mapnaam en het geëxporteerde bestand wordt opgeslagen in de aangemaakte map. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Orderdatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Orderdatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID
Regel voor bestandsnaam	Stel regels op voor de geëxporteerde bestandsnaam. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Orderdatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Orderdatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID

Dossier omzet instrument

Verplaats dossiers tussen verschillende accounts.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 바울남자연구소2	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:55


Close

Hoe gebruikt u het Dossier omzet instrument

1. Open Medit Link en klik op "Instellingen".

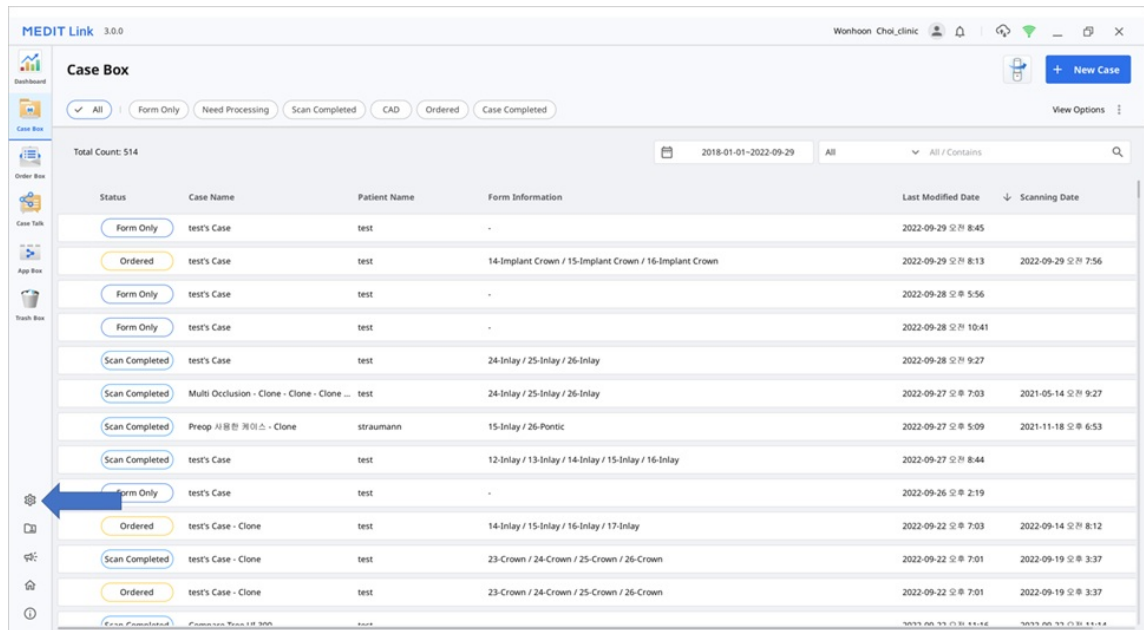


2. Kies in het linkermenu "Dossier omzet instrument".

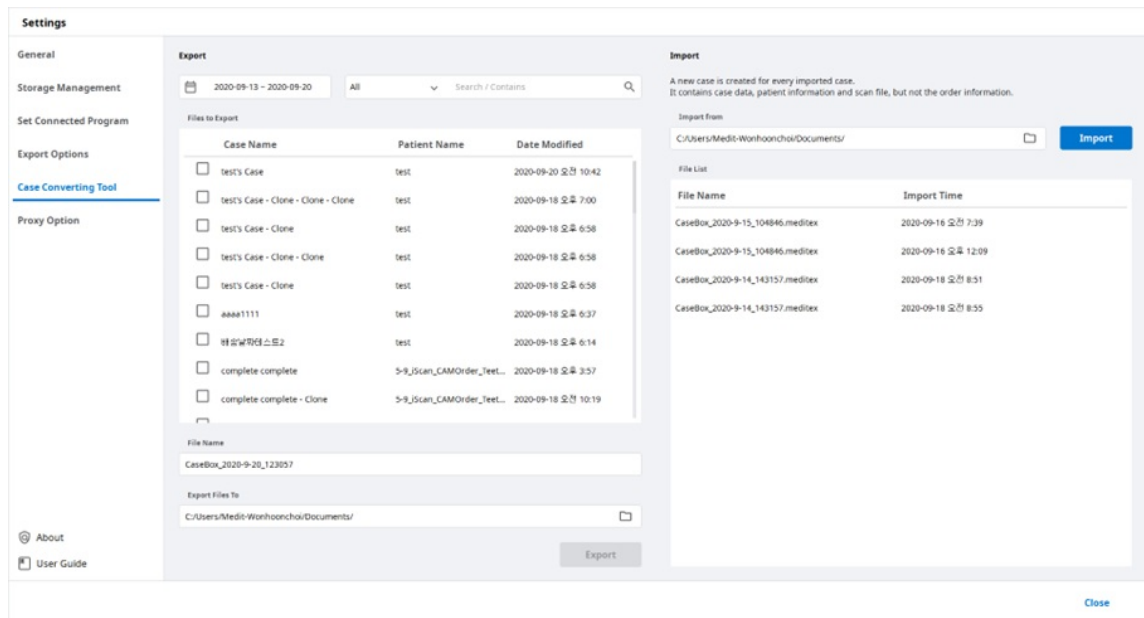

3. Klik in het importgedeelte op het mappictogram om op uw computer te zoeken naar het .meditex-bestand dat u wilt importeren.


4. Klik op de knop "Importeren" en controleer het geïmporteerde bestand in de onderstaande bestandslijst.

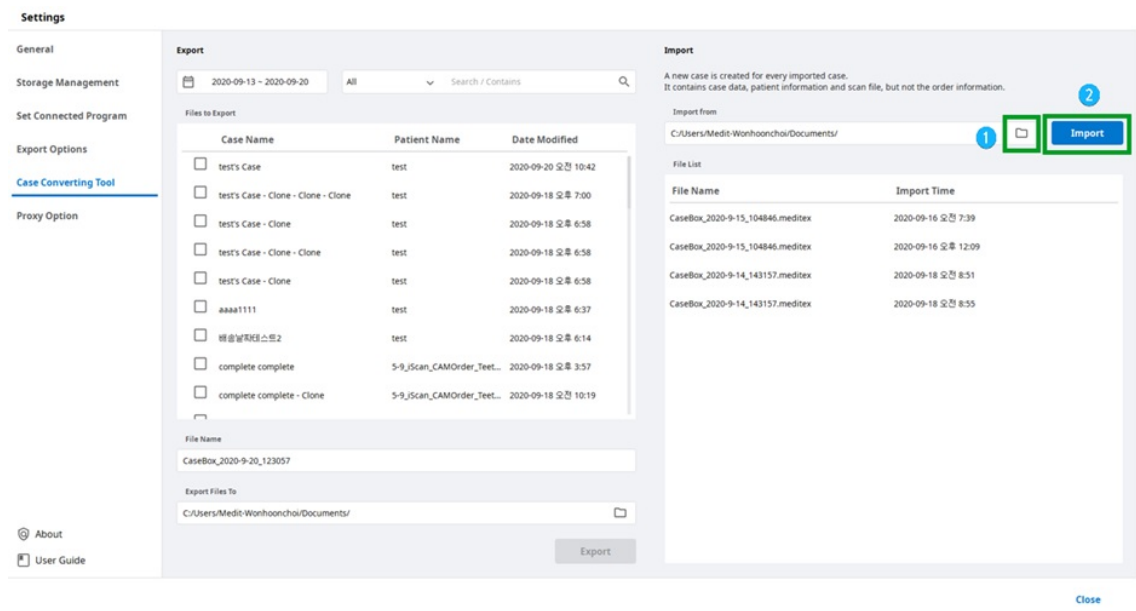

- Het geïmporteerde dossier verschijnt ook in uw Case Box (Clinic-account) of Work Box (Lab-account).


Proxy-opties

In sommige beperkte netwerkomgevingen kunt u de netwerkinstellingen wijzigen.

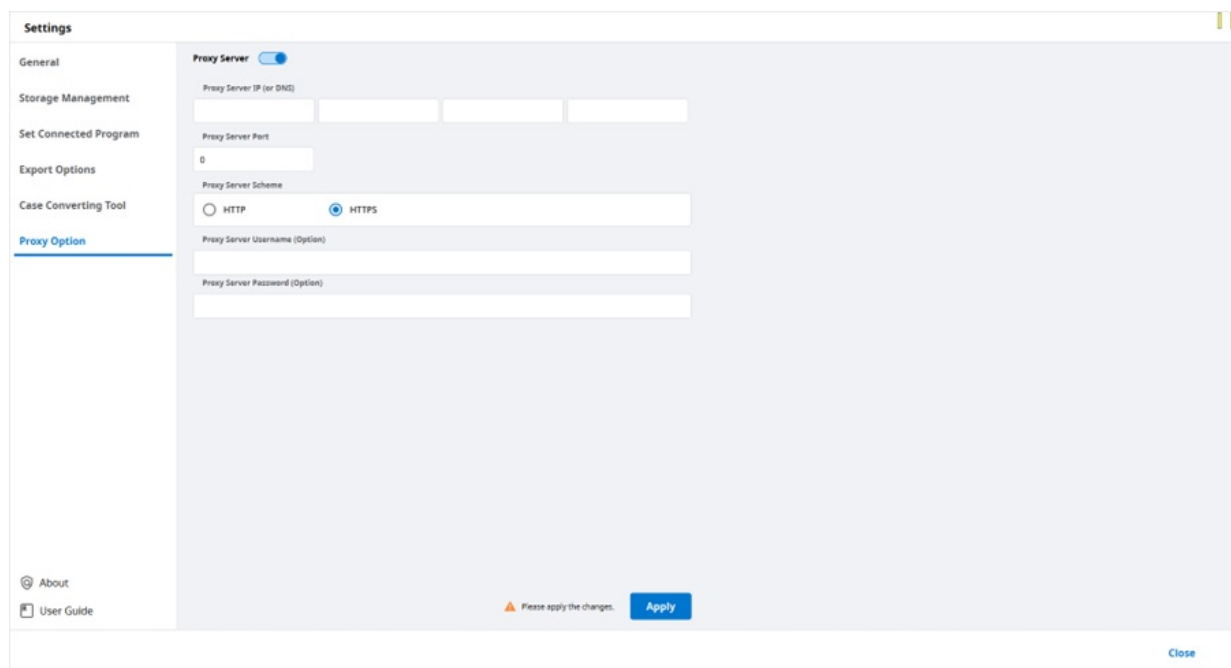

Over

Toon gedetailleerde informatie over Medit Link.

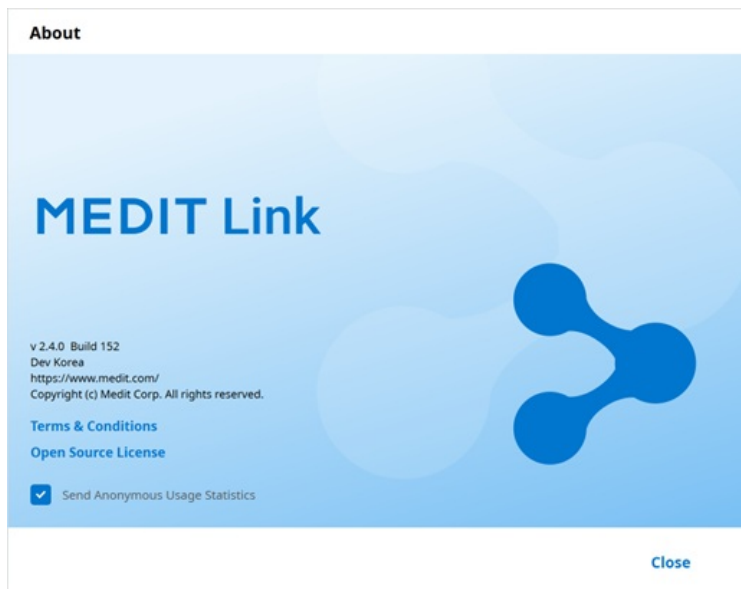

Gebruikershandleiding

Ontvang de gebruikershandleiding voor Medit Link.

Voor het openen van de gebruikershandleiding is een internetverbinding nodig.

Bestandenbekijker

De bestandenbekijker groepeerd en toont verschillende gegevens, waaronder de gegevens van programma's die met Medit Link zijn verbonden en gegevens die door gebruikers zijn toegevoegd.


Het biedt standaard beheerfuncties zoals het tonen/verbergen van gegevens, het aanpassen van de ondoorzichtigheid en het wissen van gegevens.

Het ondersteunt voorbeelden van bestanden in de volgende formaten:

- 3D-gegevens: STL, OBJ, PLY
- 2D-afbeeldingen: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videobestanden: MKV, MP4, AVI, WMV

Gegevensboom

U kunt alle gegevens voor het dossier groeperen en weergeven in de gegevensboom. U kunt ook gegevens tonen/verbergen, de transparantie aanpassen en gegevens uit de gegevensboom wissen.




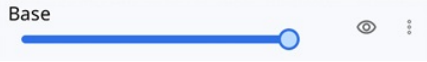
	Toon/Verberg	U kunt de gegevens tonen of verbergen.
	Ondoorzichtigheid	De schuifbalk verschijnt wanneer u op een van de gegevens in de gegevensboom klikt. U kunt de ondoorzichtigheid van de getoonde gegevens aanpassen door de schuifbalk te verplaatsen. 
	Meer	Als u op het pictogram "Meer" klikt, verschijnen er extra functies.  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens en toon alleen de overeenkomstige gegevens. • Verbergen: Verberg de gegevens. • Kopiëren: Kopieer de gegevens en voeg ze toe aan de bijlagengroep. • Exporteren: Exporteer de geselecteerde bestanden. • Hernoemen: Verander de naam van de gegevens. • Wissen: Wis de gegevens.

!Opmerking

U kunt gegevens alleen online hernoemen.

Instrumenten voor modelcontrole

3D-model beheren

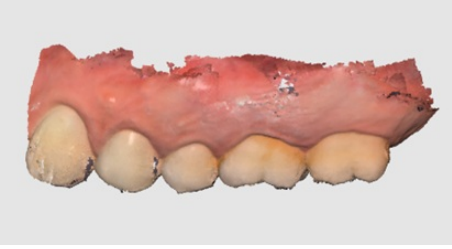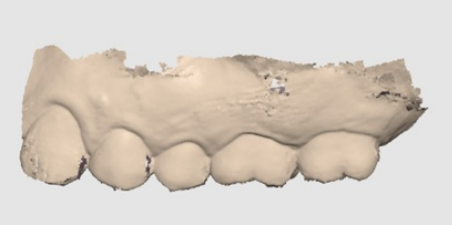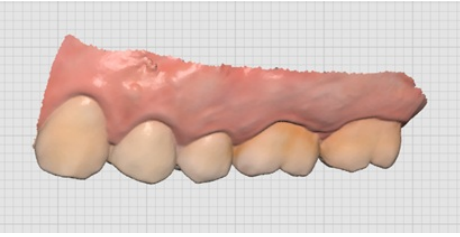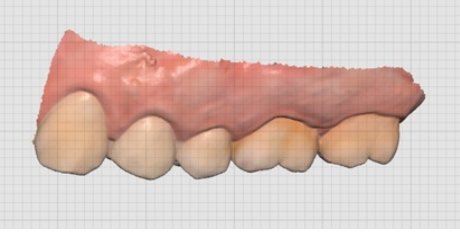	Verplaatsen		Verplaats het model.
	Roteren		Roteer het model.
	In-/uitzoomen		Zoom in en uit op het model.
	Zoom aanpassen		Plaats model in het midden van het scherm.
	Modelweergave modus	Structuur aan	Toon gegevens in echte structuurkleuren. 
		Structuur uit	Toon gegevens in een enkele kleur. 
	Rasterinstellingen (mm)	Raster aan	Toon het raster op de achtergrond. 
		Overlay aan	Plaats het raster over het model. 
		Raster uit	Verberg het raster.

2D-afbeeldingen beheren

	Volgende/vorige afbeelding	Beweeg tussen afbeeldingen.
	Bewerken	Bewerk de afbeelding.


	Venster losmaken/aanpassen	Maak het afbeeldingsvenster los en verplaats het naar de gewenste positie. Wijzig het formaat van het venster. Wanneer het venster op zijn oorspronkelijke plaats wordt teruggezet, krijgt het zijn standaardgrootte terug.
---	-----------------------------------	---

Functie-instrumenten

Beeldopname en notitie


Leg het huidige scherm vast als een 2D-afbeelding. U kunt erop tekenen of notities toevoegen.


U kunt het als bestand met uw notities opslaan en als referentie opsturen.

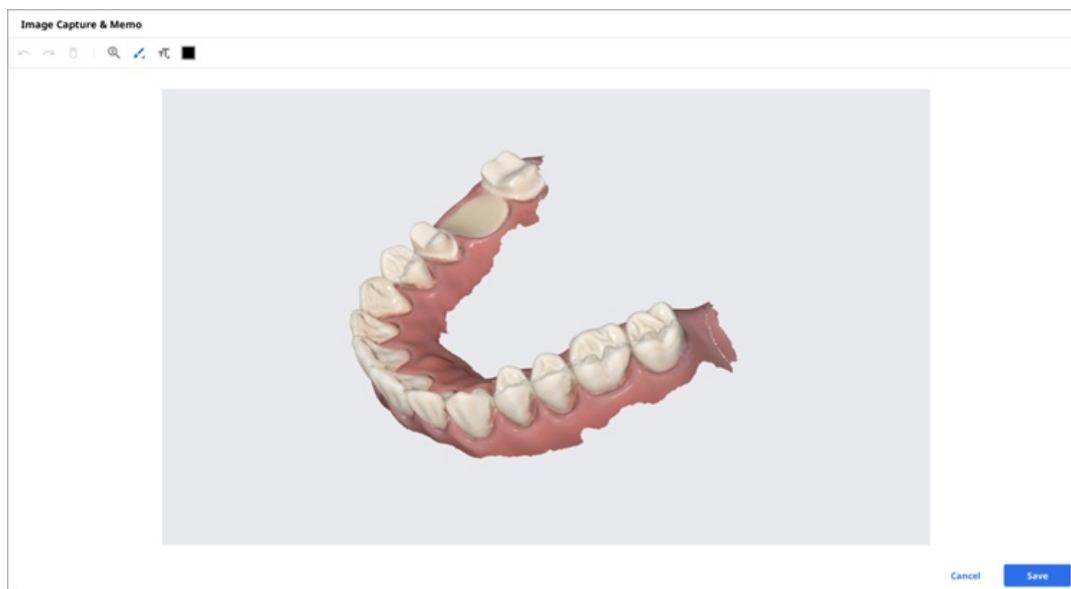

Ortho-opname


Leg de beelden vast in de huidige weergaverichting, evenals boven/onder/links/rechts vanuit de huidige weergaverichting.

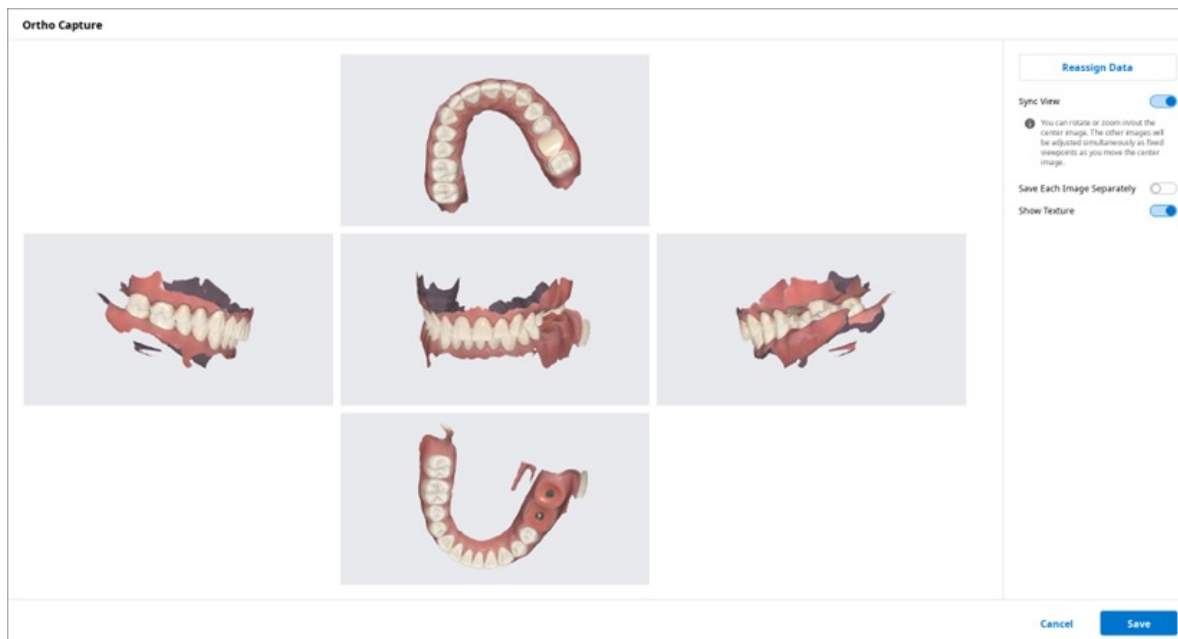

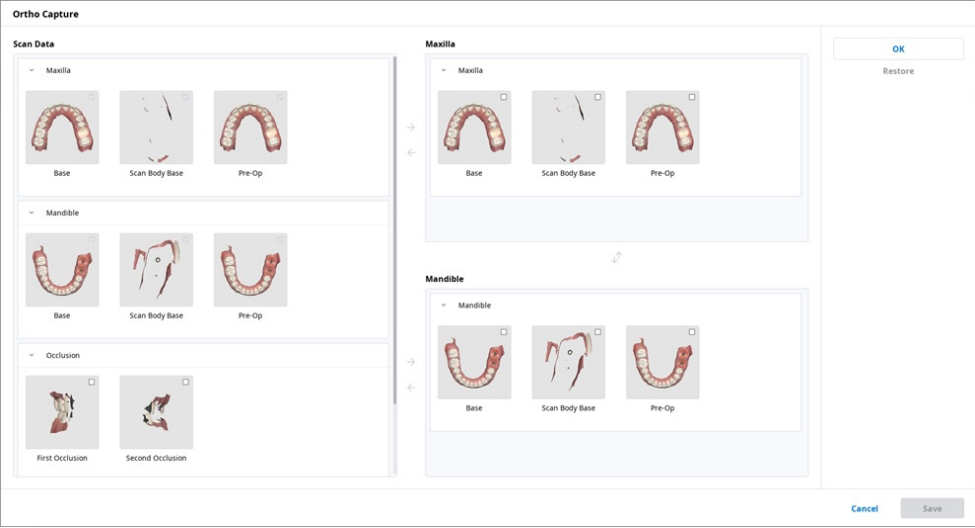Sync-weergave	Indien ingeschakeld, kunt u de middelste afbeelding roteren, of erop in- en uitzoomen. De andere afbeeldingen worden tegelijkertijd aangepast als vaste weergaverichtingen terwijl u de middelste afbeelding verplaatst. Indien uitgeschakeld, kunt u alle afbeeldingen afzonderlijk verplaatsen, roteren of erop in- en uitzoomen.
Elke afbeelding apart opslaan	Sla elke afbeelding op in hoge resolutie.
Structuur tonen	Schakel de structuur van het model in of uit.
Gegevens opnieuw toewijzen	Wijzig de gegevens voor de bovenkaak/onderkaak met de functie "Gegevens opnieuw toewijzen". U kunt de gewijzigde gegevens gebruiken om de resultaatafbeeldingen van Ortho-opname te maken en te gebruiken.  • Scangegevens: Alle scangegevens van het dossier worden weergegeven. • Bovenkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de bovenkaak worden weergegeven. • Onderkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de onderkaak worden weergegeven.


Gaten vullen

Vul gaten in 3D-meshgegevens.

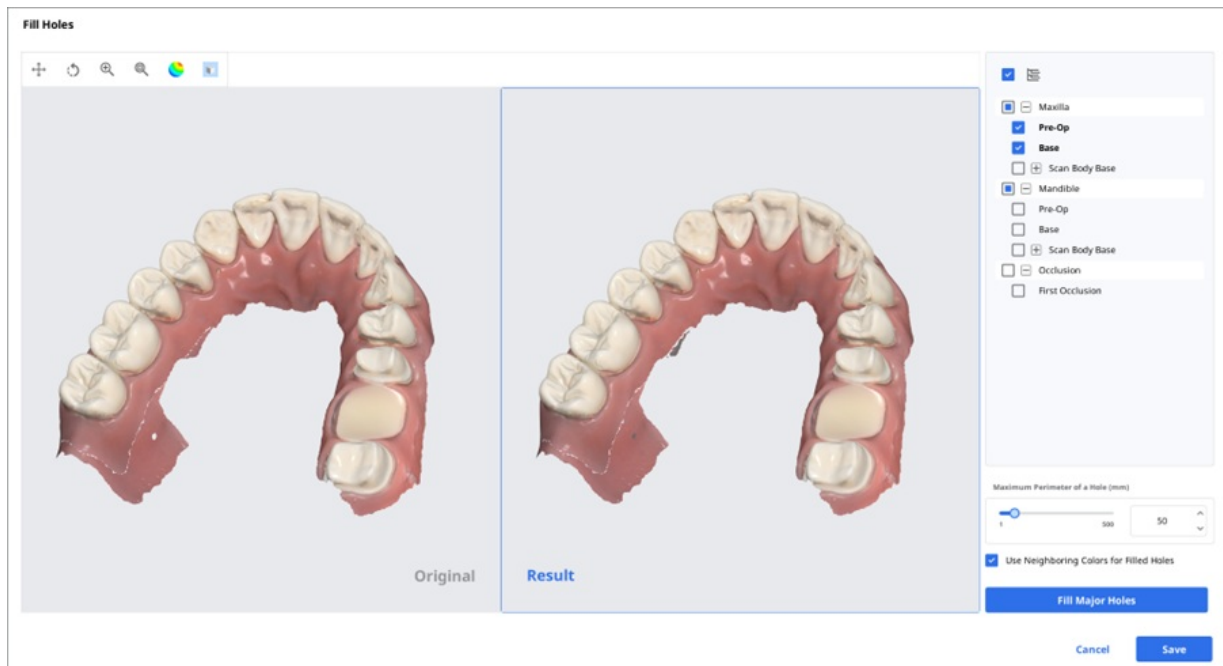

Bijknippen


Bijknippen biedt verschillende instrumenten om gegevens te bewerken.

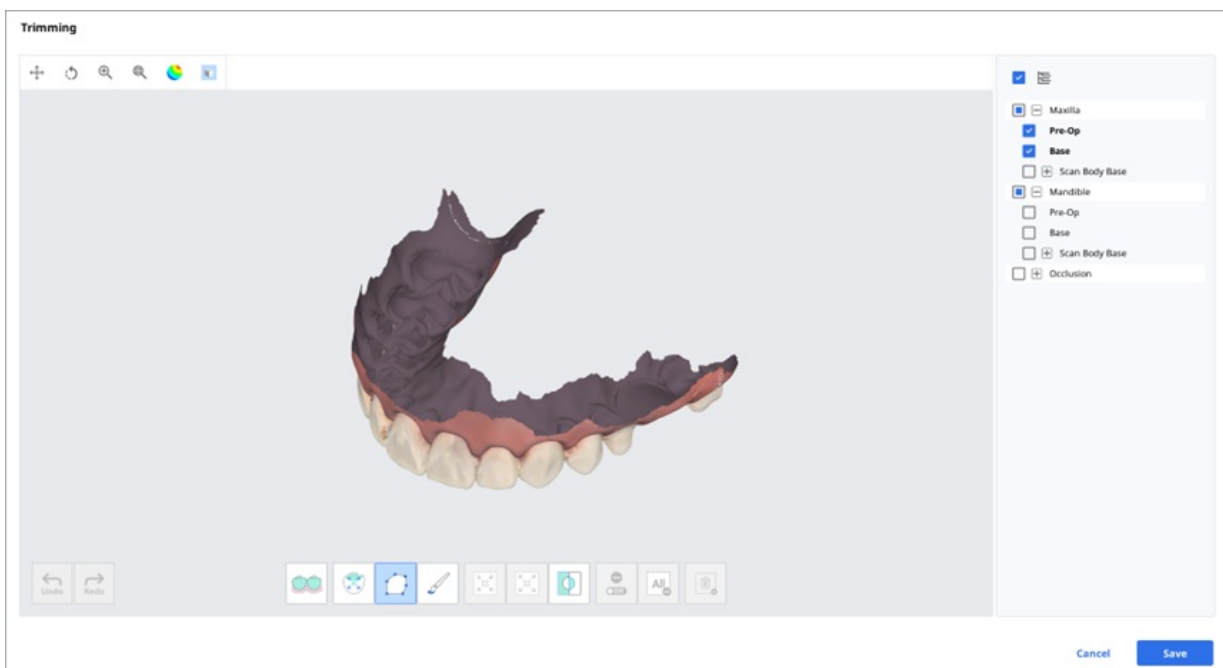

De geselecteerde 3D-meshgegevens kunnen met verschillende instrumenten onderin het venster worden bewerkt.

Selectie		Slimme tandselectie	Selecteer automatisch alle tanden van de boog, zonder het tandvlees. !Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar voor de scangegevens die zijn verkregen door Medit Scan for Clinics met de optie "GPU gebruiken" ingeschakeld.
		Slimme enkele tandselectie	Selecteer automatisch het gebied van een enkele tand, zonder het tandvlees. Klik, druk en sleep de muis op de tand.
		Polylijnselectie	Selecteer alle entiteiten binnen de getekende polylijnvorm op het scherm.
		Kwastselectie	Selecteer alle entiteiten op een uit de vrije hand getekend pad op het scherm. Alleen de voorkant wordt geselecteerd. De kwast is beschikbaar in drie verschillende maten.
Aanpassing van geselecteerd gebied		Verklein het geselecteerde gebied	Verklein het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Vergroot het geselecteerde gebied	Vergroot het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Keer het geselecteerde gebied om	Selectie omkeren.
Deselectie		Selectie/Deselectie	Indien ingeschakeld, kunt u met behulp van verschillende instrumenten het geselecteerde gebied deselecteren.
		Wis de hele selectie	Wis alle geselecteerde gebieden.
		Geselecteerd gebied wissen	Wis de gegevens uit het geselecteerde gebied.

1. Selecteer het gebied dat u wilt bijknippen met de instrumenten voor gebiedsselectie.

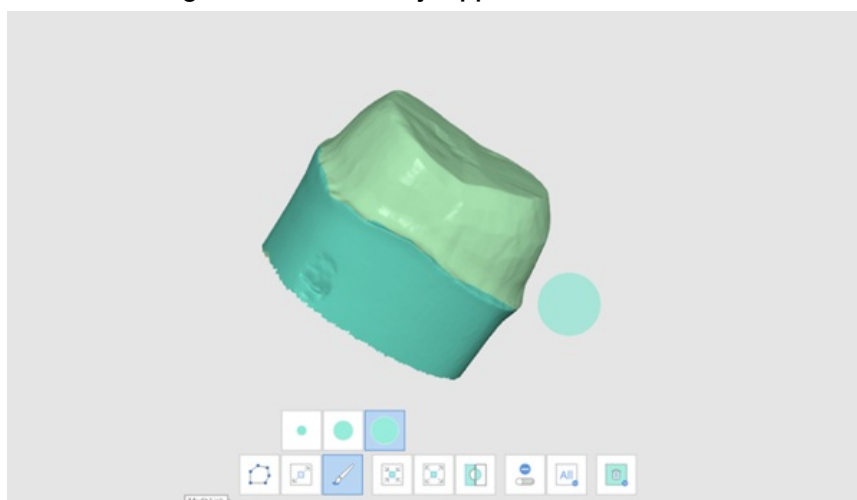


2. **iOpmerking**


Het instrument "Polylijn bijknippen" selecteert alle objecten binnen een polylijn die op het scherm is getekend, terwijl het instrument "Kwast bijknippen" alleen de objecten aan de voorzijde selecteert.

3. U kunt de selectie omkeren, verkleinen of vergroten met de volgende drie instrumenten.


- Keer het geselecteerde gebied om

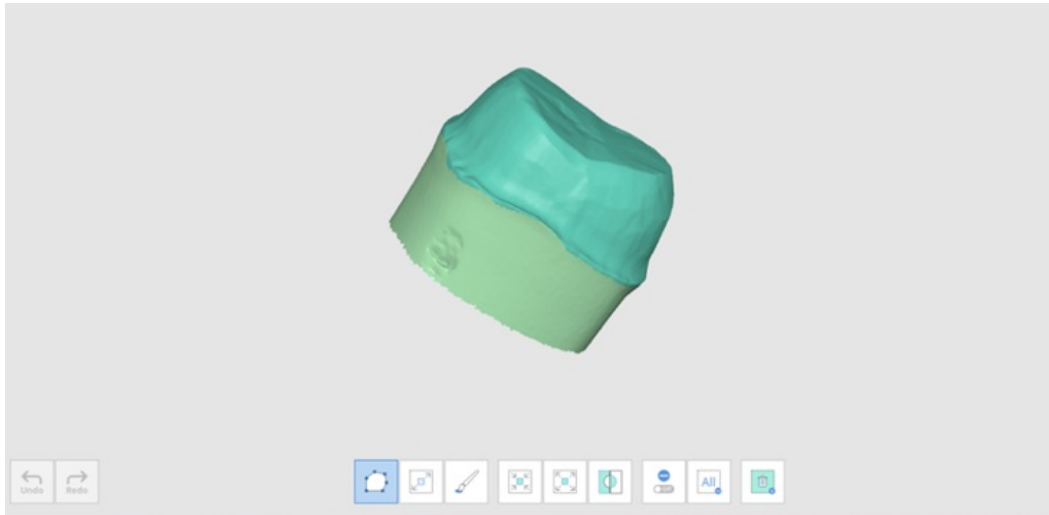

- Verklein het geselecteerde gebied

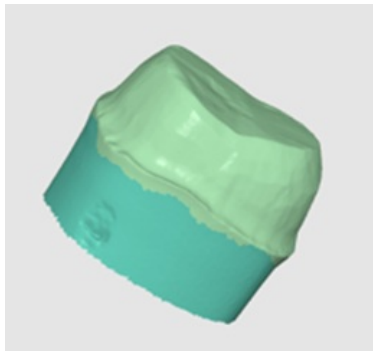

- Vergroot het geselecteerde gebied

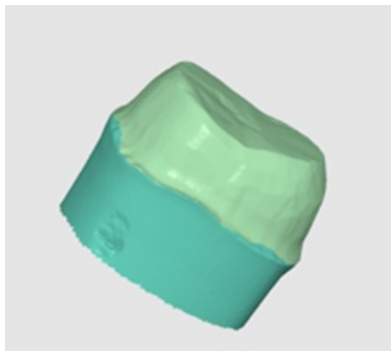

4. U kunt de geselecteerde gebieden deselecteren met het instrument "Geselecteerd gebied wissen".



Optimaliseer occlusie-uitlijning

Optimaliseer de occlusie-uitlijning. U kunt de doelgegevens kiezen en de occlusie-uitlijning aanpassen.




Compensatieniveau

Laag		
Gemiddeld		

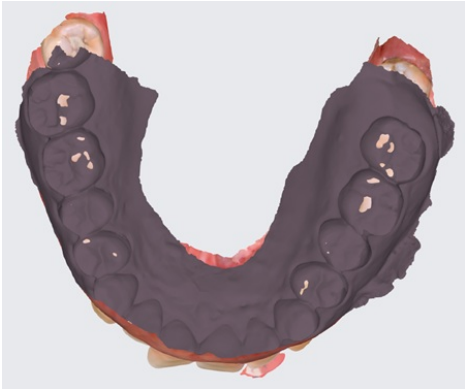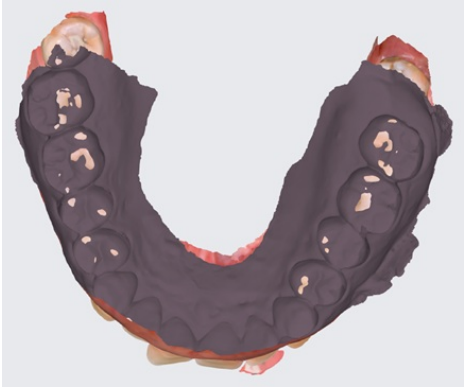Hoog	Compensation Level ☒	
Uit	Compensation Level ☐	

Onderkaakbeweging

U kunt de onderkaakbewegingen die zijn opgenomen in Medit Scan for Clinics afspelen om de dynamische occlusale contacten tussen het boven- en ondergebit te zien.

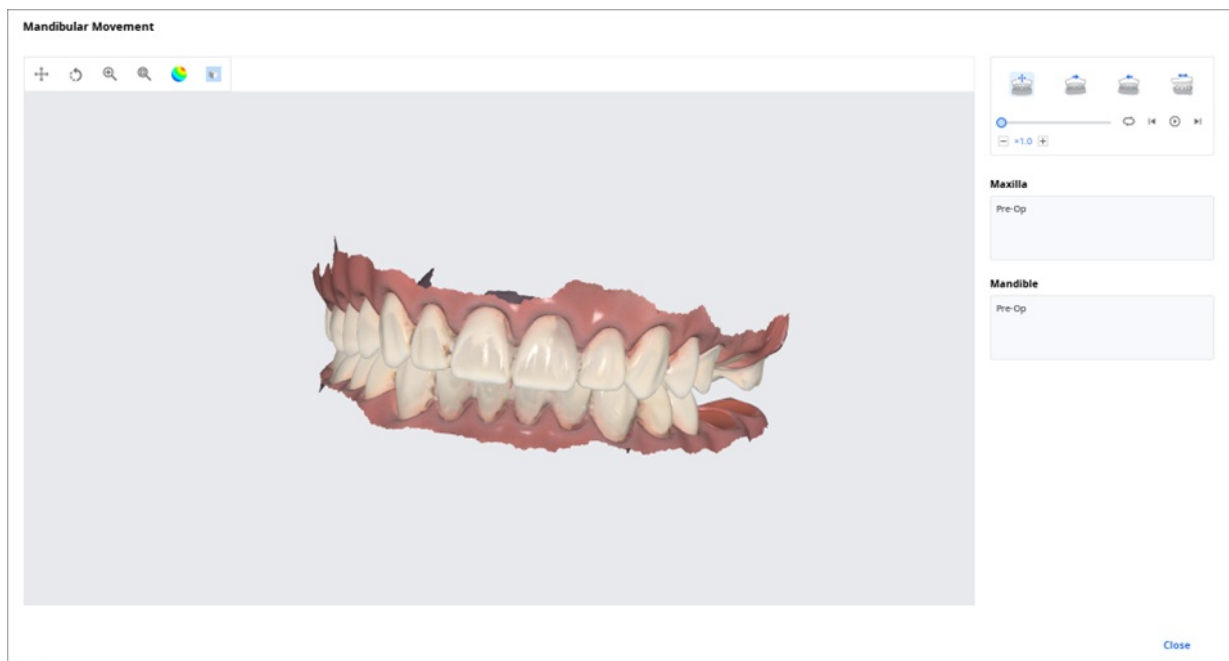

	Vrije beweging	Speel de opname van de vrije onderkaakbeweging af.
	Linker laterale beweging	Speel de opname van de naar links bewegende onderkaak af.
	Rechter laterale beweging	Speel de opname van de naar rechts bewegende onderkaak af.

	Protrusieve beweging	Speel de opname van de voorwaarts bewegende onderkaak af.
---	-----------------------------	---

Beheer de Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker

U kunt meerdere resultaten van occlusiegegevens krijgen uit de Medit Scan-applicatie.

Medit Link biedt de functie om de resultaten te beheren via de "Bestandenbekijker".

Meerdere resultaten beheren


Wanneer de gebruiker meerdere occlusieresultaten krijgt van Medit Scan for Clinics, biedt Medit Link de mogelijkheid om een resultaat te selecteren.

De lijst met resultaten wordt op naam weergegeven en u kunt één object selecteren.

Het geselecteerde model wordt weergegeven in de "Gegevensboom" en het "Modelweergavegebied".



U kunt de lijst inklappen en het object wijzigen met behulp van de pijlsymbolen.

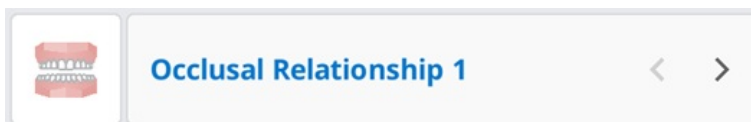

Weergaveopties

U kunt de weergaveopties wijzigen om de opmaak van de dossierlijst in Case Box/Work Box/In Box/Order Box aan te passen.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilters

Toon of verberg elk filter dat de status van het dossier weergeeft. De verborgen statusfilters worden niet weergegeven op het scherm in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Met de getoonde filters kunt u eenvoudig het dossier vinden dat u nodig heeft.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

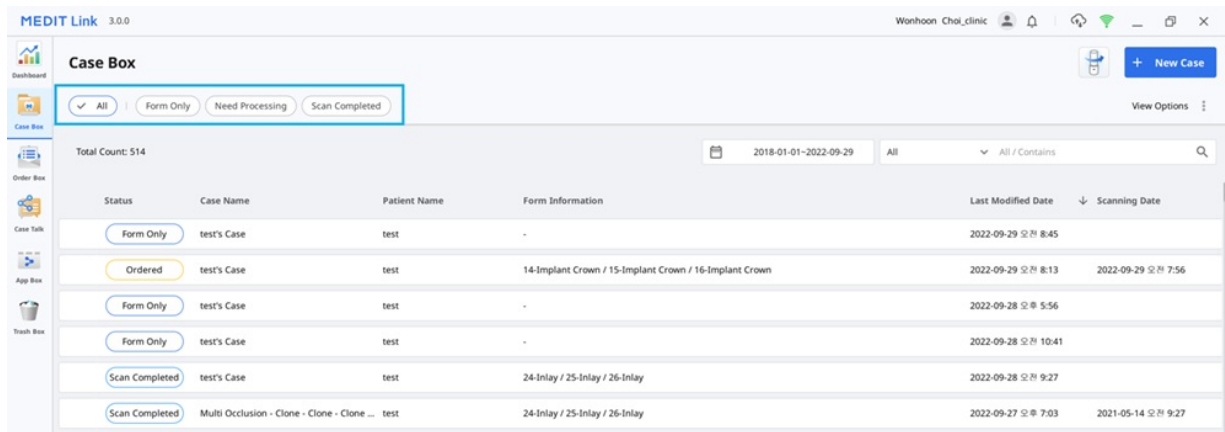

- U kunt op de status klikken die u wilt bekijken om alleen dossiers in die status weer te geven.
- U kunt meerdere statussen tegelijk selecteren.

Beschikbare filteropties voor elke box:

Case Box	Alle/Alleen formulier/Verwerking nodig/Scan voltooid/CAD/Besteld/Dossier voltooid
Order Box	Alle/In behandeling/Geannuleerd/Afgewezen/Geaccepteerd/Verzonden/Dossier voltooid
In Box	Alle/In behandeling/Geannuleerd/Afgewezen/Geaccepteerd/Gereed/Verzonden/Dossier voltooid
Work Box	Alles/Alleen formulier/Verwerking nodig/Scan voltooid/CAD/Voltooid
Trash Box	Niet ondersteund

Tabel items

Selecteer de objecten die moeten worden weergegeven in de dossierlijst in Case Box/Work Box/In Box/Order Box. U kunt de volgorde van de tabelitems wijzigen of de kolombreedte van de tabel in de lijstweergave aanpassen om deze optimaal af te stemmen op de gebruikersomgeving.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Weergavetype

Wijzig het weergavetype tussen galerijweergave en lijstweergave op de Case Box.

Galerijweergave

MEDIT Link 3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total Count: 644

2018-01-01-2022-10-28 All / Contains

test's Case

test

No Registered Form

2022-10-27 오전 8:59 Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27 Pontic 26

2022-10-26 오후 10:24 Scan Completed

Preop 사용한 케이스

straumann

Inlay 15 Pontic 26

2022-10-26 오후 7:44 Ordered

test's Case

test

Inlay 28 Crown 16

Custom Abutment + 21, 22, 23, 24, 25, 26

2022-10-26 오후 7:43 Scan Completed

주문테스트 1 - Clone

test

Inlay 16, 15, 14, 23, 24, 2...

2022-10-26 오후 12:15 Ordered

TreeTest20221026

test

Crown 25, 27 Pontic 26

2022-10-26 오전 8:51 Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27 Pontic 26

2022-10-25 오전 9:04 Ordered

R2.4.0_TAK_Medit Scan for Clinics_Basic_with ...

2.4.0 Data_TAK

Inlay 46 Crown 25, 27

Implant Crown 16, 36 2More

2022-10-24 오후 3:18 Scan Completed

temporaries

temporaries - Clone - Clone - Clone

주문테스트 1 - Clone - Clone

test's Case

1

Medit Link2.3.0 Release

2

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

3

Implant Crown Zirconia

11, 12, 13, 14,...

3

Inlay Zirconia

3, 4, 5, 6, 7

4

Crown Metal

18, 19, 20, 21,...

5

1

2020-09-14 오전 7:43

5 Scan Completed

1	Dossiernaam
2	Naam en geboortedatum van de patiënt
3	Formulierinformatie
4	Scandatum
5	Dossierstatus

Lijstweergave

MEDIT Link3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

▼ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

View Options

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Wonhoonchoi-Lab
Scan Completed	케이스해모있고주문해모수경한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파일리스틀레스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Groeperen

Selecteer een groeperingsoptie om dossiers in de lijst in te delen en te rangschikken op basis van de geselecteerde optie.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone

None

Patient Name

Order Date

Scanning Date

SortingLast Modified Date >

Voor elke box zijn de volgende groeperingsopties beschikbaar:

Box	Groepering
Case Box	Geen
	Patiëntnaam
	Scandatum
	Orderdatum
Order Box	Geen
	Scandatum
	Orderdatum

	Aangevraagde bezorgdatum
In Box	Geen
	Orderdatum
	Aangevraagde bezorgdatum
Work Box	Geen
	Aangevraagde bezorgdatum

!Opmerking

De opties voor groeperen en sorteren zijn niet beschikbaar in de Trash Box en Case Talk.

Sorteren

Selecteer een sorteeroptie om de volgorde van de dossiers in de lijst te wijzigen op basis van de geselecteerde optie.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Sorting Last Modified Date ▾

☐ Patient Name
☒ Last Modified Date
☐ Scanning Date
☐ Order Date
☐ Lab Name

Voor elke box zijn de volgende sorteeropties beschikbaar:

Box	Groepering	Sorteren
Case Box	Geen	Patiëntnaam / Laatste wijzigingsdatum / Scandatum / Orderdatum / Laboratoriumnaam
	Patiëntnaam	Laatste wijzigingsdatum / Scandatum / Orderdatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Laatste wijzigingsdatum / Orderdatum / Laboratoriumnaam
	Orderdatum	Patiëntnaam / Laatste wijzigingsdatum / Scandatum / Laboratoriumnaam
Order Box	Geen	Patiëntnaam / Scandatum / Orderdatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Orderdatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam

	Orderdatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Scandatum / Orderdatum / Laboratoriumnaam
In Box	Geen	Patiëntnaam / Orderdatum / Aangevraagde bezorgdatum / Klinieknaam
	Orderdatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Klinieknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Orderdatum / Praktijknaam
Work Box	Geen	Patiëntnaam / Laatste wijzigingsdatum / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam/ Laatste wijzigingsdatum / Praktijknaam

!Opmerking

De opties voor groeperen en sorteren zijn niet beschikbaar in de Trash Box en Case Talk.

Filteren en zoeken


Op datum filteren

Filter en toon dossiers die het laatst gewijzigd zijn binnen de ingestelde periode.

1. Klik op de periodefilter.



2. Selecteer de duur uit de lijst.

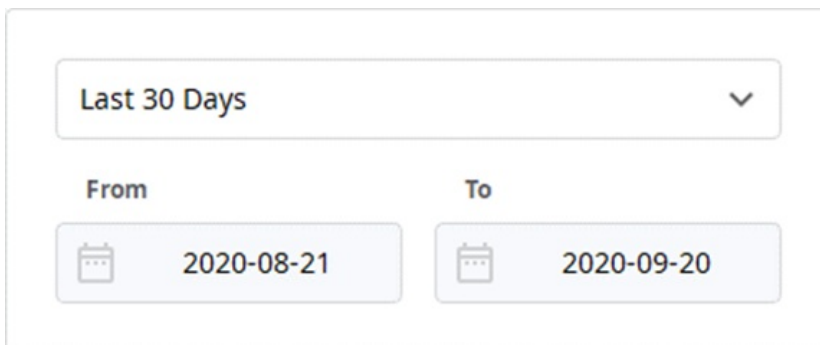


- Alle: Toont alle dossiers.
- Aangepast bereik: Geef de begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die het laatst zijn gewijzigd binnen de periode.
- Vandaag: Toont de dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- Gisteren: Toont de dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 30 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Deze maand: Toont de dossiers die in deze maand voor het laatst zijn gewijzigd.
- Vorige maand: Toont de dossiers die in de afgelopen maand zijn gewijzigd.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Geavanceerde zoekmogelijkheden

Gebruik de zoekmogelijkheden om snel de gewenste informatie te vinden.

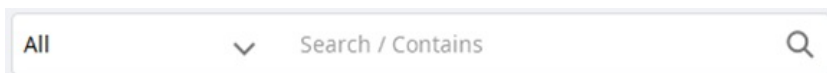

De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar voor elke box:

Case Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Formulierinformatie, Laboratoriumnaam
Order Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Laboratoriumnaam, Order-ID
In Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Order-ID
Work Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Formulierinformatie, Klinieknaam, Order-ID
Case Talk	Case Talk naam (bevat), Patiëntnaam (gelijk aan)
Trash Box (Clinic)	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Laboratoriumnaam, Wissen op

Trash Box
(Lab)

Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Wissen op

U kunt zoekcriteria selecteren en kiezen tussen "Bevat" en "Gelijk aan".

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen

Dossiers aanmaken

Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)

1. Klik op "Nieuw dossier" in de rechterbovenhoek.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. Voer basisinformatie in, zoals de patiëntnaam en de dossiernam.
 - Als u een naam invoert die niet op de patiëntenlijst voorkomt, wordt een nieuwe patiënt toegevoegd.
 - Als u een naam invoert die in de patiëntenlijst staat, kunt u deze uit de lijst selecteren.
 - Als u een dossier voor een bestaande patiënt registreert, klikt u op het pictogram "Patiëntenlijst" om een bestaande patiënt te selecteren.
- 
- In het dialoogvenster Patiëntenlijst kunt u een nieuwe patiënt registreren of de gegevens van een bestaande patiënt bewerken.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wijnhoop Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. De dossiernam wordt automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Klik op "Registreren en scannen" om de registratie van het dossier te voltooien en te

beginnen met scannen.

- **Registreren:** Ga naar het tabblad Formulier om formulierinformatie voor het dossier in te voeren.
- **Registreren en scannen:** U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina. Dit is nuttig bij het registreren van meerdere dossiers.

Dossier aanmaken in Work Box (Lab)

1. Klik in de rechterbovenhoek op "Nieuw dossier".

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Voer de naam van de praktijk in of selecteer deze.
3. Voer de patiëntnaam en de dossiernam in. De dossiernam wordt automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid.
5. Na registratie van het dossier wordt u doorgestuurd naar de hoofdpagina.

Dossiers bewerken

Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)

1. Klik op "Wijzigen" naast de dossiernam.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel **Apply**

- Klik op "Zoeken" om de patiëntnaam te wijzigen. U kunt dit niet direct bewerken; in plaats daarvan kunt u een patiëntnaam zoeken waarmee u de huidige patiënt wilt vervangen en de informatie van die patiënt in de lijst bewerken.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-09-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close **Select**

- Selecteer de patiëntnaam waarmee u de huidige wilt vervangen.
- Om een nieuwe patiënt aan te maken, drukt u op de knop "Nieuwe patiënt".
- Gebruik de knop "Wijzigen" om de geregistreerde informatie over de patiënt te wijzigen.
- Klik op "Toepassen" om het proces af te ronden.

Dossier bewerken in Work Box (Lab)

- Klik op "Wijzigen" naast de dossiernummer.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Klik op "Toepassen" als de bewerking is voltooid.

Opmerking

U kunt de informatie van de dossiers die u via de order in In Box heeft ontvangen niet wijzigen.

Dossiers kopiëren

Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)

1. Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



2. U wordt gevraagd welke informatie u naar het nieuwe dossier wilt kopiëren.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Kies of u alleen formulierinformatie of alle gegevens wilt kopiëren.
4. Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".

Dossier kopiëren in Work Box (Lab)

1. Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



2. Kopieer alle gegevens om een nieuw dossier aan te maken.
3. Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".


Dossier wissen

Dossier wissen (Clinic en Lab)

1. Klik op het "Wissen"-pictogram.



2. Klik op "OK" om het dossier te wissen.

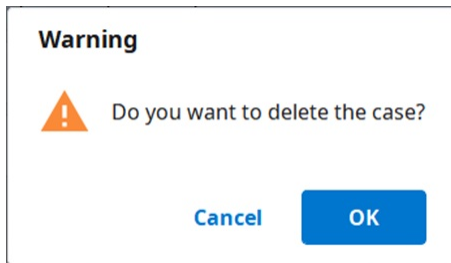

3. Gewiste dossiers worden verplaatst naar de Trash Box en kunnen indien nodig worden hersteld.

Formulierinformatie

Voer de formulierinformatie in op basis van het verbonden programma en het type behandeling.

De informatie die u invoert, wordt gebruikt als basisinformatie voor het werken met scan- of CAD-programma's en het plaatsen van orders.

Formulierinformatie registreren in Case Box

Voer in op het tabblad Formulier

1. Selecteer of u behandelingsinformatie per tand of per boog wilt invoeren.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd in de orderlijst.
3. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Voer in op het tabblad CAD

1. Selecteer een van de volgende opties die uw scanstrategie bepalen: Tanden/Flexibele multi-mal/Multi-mal.
2. Selecteer het tandnummer/boog/malnummer.
3. Bepaal de instellingen voor gedetailleerde opties en CAD-bewerkingen.
4. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd in de orderlijst.
5. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan

Formulierinformatie registreren in Work Box

Voer in op het tabblad Formulier

1. Selecteer het scanprogramma dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer een van de volgende opties die uw scanstrategie bepalen: Tanden/Flexibele multi-mal/Multi-mal.
3. De methoden kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde scanprogramma.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tanden	☐	☐
Boog	☐	☐
Flexibele multi-mal	☒	☐
Multi-mal	☒	☐


4. Selecteer tanden, boog of malnummers voor het scanproces.
5. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd op de lijst.
6. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Voer in op het tabblad CAD

1. Selecteer een van de volgende opties die uw scanstrategie bepalen: Tanden/Flexibele multi-mal/Multi-mal.
2. Selecteer het tandnummer/boog/malnummer.
3. Bepaal de instellingen voor gedetailleerde opties en CAD-bewerkingen.
4. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd op de lijst.
5. Klik op "Opslaan".

Tanden verbinden tot brug

U kunt meerdere tanden tot een brug verbinden wanneer hetzelfde materiaal op meerdere aangrenzende tanden wordt aangebracht. Klik op het brugpictogram naast de geselecteerde tanden om ze te verbinden of te scheiden.

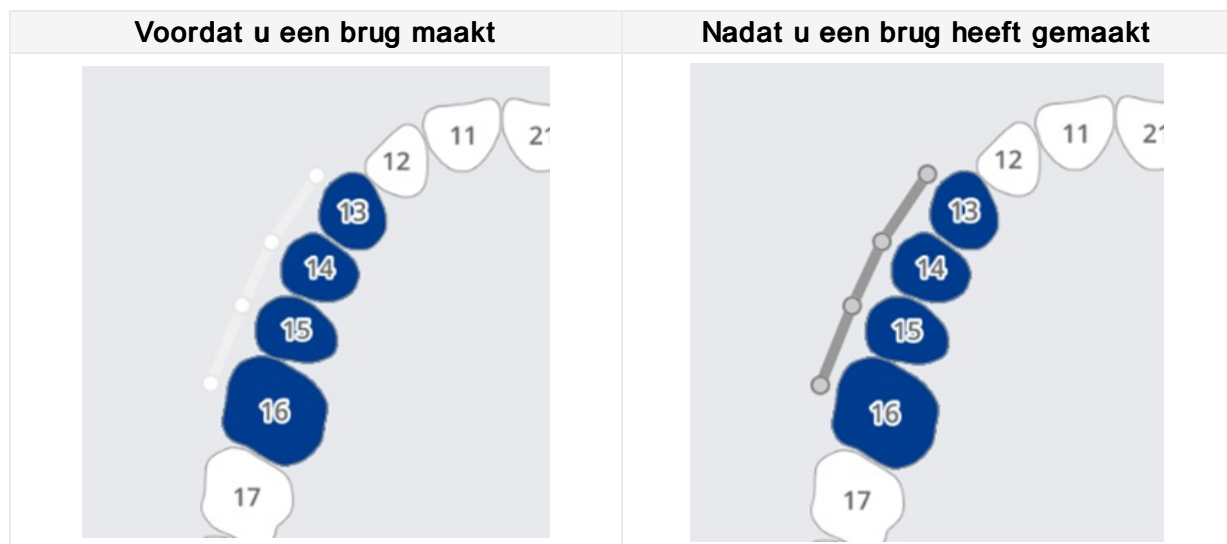

Scanopties instellen

Afhankelijk van het programma waarmee u werkt, worden verschillende scanopties geboden.

De geselecteerde scanopties worden doorgegeven aan elk scanprogramma.

Medit Scan for Labs

Algemene opties

	Aangrenzende tanden	Markeer de voorbereide en aangrenzende tanden en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Antagonist	Markeer automatisch de antagonisten en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Articulator	Geef opties weer voor het selecteren van de articulator in het scanprogramma.
	Bewegingsmarkering	Sta het gebruik van de scanstrategie "Kaakbeweging" in het scanprogramma toe.

Opties per tand

	Scanlichaam	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van scanlichamen in het scanprogramma.
	Pre-operatie scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van een pre-operatie model in het scanprogramma.
	Wasmodel scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van wax-ups in het scanprogramma.

Aan favorieten toevoegen

U kunt snel een product selecteren door het als favoriet op te slaan.

De lijst met opgeslagen favorieten wordt beheerd als een sjabloon en kan worden gedeeld via de export- en importfuncties.

Aan favorieten toevoegen

1. Selecteer het tandnummer.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Type – Methode – Materiaal – Tinten kunnen als favoriet worden opgeslagen, zelfs als ze niet allemaal zijn geselecteerd.
3. Klik op het "Ster"-pictogram.

4. Een combinatie van de geselecteerde parameters, met uitzondering van het tandnummer, staat op uw favorietenlijst.

Favoriete sjablonen beheren

U kunt verschillende soorten sjablonen opslaan, beheren en delen.

Toevoegen	Voeg een nieuw sjabloon toe.
Hernoemen	Hernoem het huidige sjabloon.
Wissen	Wis het huidige sjabloon.
Exporteren	Exporteer het huidige sjabloon naar een bestand.
Importeren	Importeer een sjabloonbestand.

Werken aan scannen/CAD

Scanproces

Op basis van de ingevoerde informatie gaat u verder met scannen.

1. Voer behandelingsinformatie in/ sla deze op en selecteer de nodige scanopties.
2. Klik op de knop "Scannen" in de rechterbovenhoek van het venster.

CAD-proces

Medit Link is geïntegreerd met exocad.

CAD	Behandelingsinformatie registreren	Bevestiging van behandelingsinformatie	Directe CAD-uitvoering	CAD-resultaten kunnen terug naar Medit Link worden geïmporteerd
exocad	☐	☐	☐	☐

1. In Instellingen > Verbonden programma instellen, kunt u het gewenste CAD-programma uit de lijst verbinden.
2. Voer taakinformatie en ontwerpties in en sla deze op in het CAD-tabblad.
3. Klik op "CAD" in de rechterbovenhoek van het venster.
4. Het verbonden CAD-programma wordt uitgevoerd, en de gegevens worden automatisch verzonden.
5. Sla de resultaten op na het uitvoeren van CAD.

iOpmerking

Het is niet mogelijk om Medit Link for Mac met CAD te verbinden.

Resultaatbestanden krijgen

Bestanden met scanresultaten exporteren

Naast het delen van resultaten met partners via orders, kunt u met Medit Link ook uw resultaten opslaan in het gewenste bestandsformaat met behulp van de exportfunctie.

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export


Exporteer bestanden naar	Geeft het pad op waar u de resultaten wilt opslaan.
Mapnaam	Het systeem creëert automatisch een nieuwe map en slaat alle resultaten daarin op. De naam van de map wordt standaard ingesteld volgens de naamgevingsregels. U kunt ook zelf de mapnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor mapnaam
Bestandsnaam	Stelt de bestandsnaam voor het resultaat in. De naamgevingsregel bepaalt de standaard bestandsnaam. U kunt ook zelf de bestandsnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor bestandsnaam
CAD-type	Kies het CAD-programma dat u wilt gebruiken voor uw ontwerp. Medit Link past de bestanden automatisch aan op basis van uw selectie, waardoor u kunt doorgaan met het ontwerpen zonder extra asuitlijning.
Meshformaat	Geeft het formaat van het mesh-bestand aan.
Afbeeldingsformaat	Geeft het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Bestanden comprimeren	Comprimeert alle resultaten tot één bestand.

Individuele mesh samenvoegen	Combineert het resultaat van de bovenkaak of onderkaak met de individuele tand. Nuttig wanneer het importeren van meerdere bestanden in een programma niet mogelijk is.
Exporteer alle occlusale relaties	Wanneer meerdere occlusale resultaten vanuit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale resultaten in één keer exporteren.
Sla de dossierinformatie op als PDF	Sla de dossierinformatie op als een pdf met het resultaat.

Geselecteerde bestanden exporteren

Medit Link biedt een exportfunctie vanuit het uitklapmenu in de bestandenbekijker. Hiermee kunt u de geselecteerde bestanden eenvoudig exporteren.

1. Klik op het "Menu"-pictogram naast de gegevensgroep of een object in de gegevensboom van de bestandenbekijker.
2. Klik vervolgens op "Exporteren".

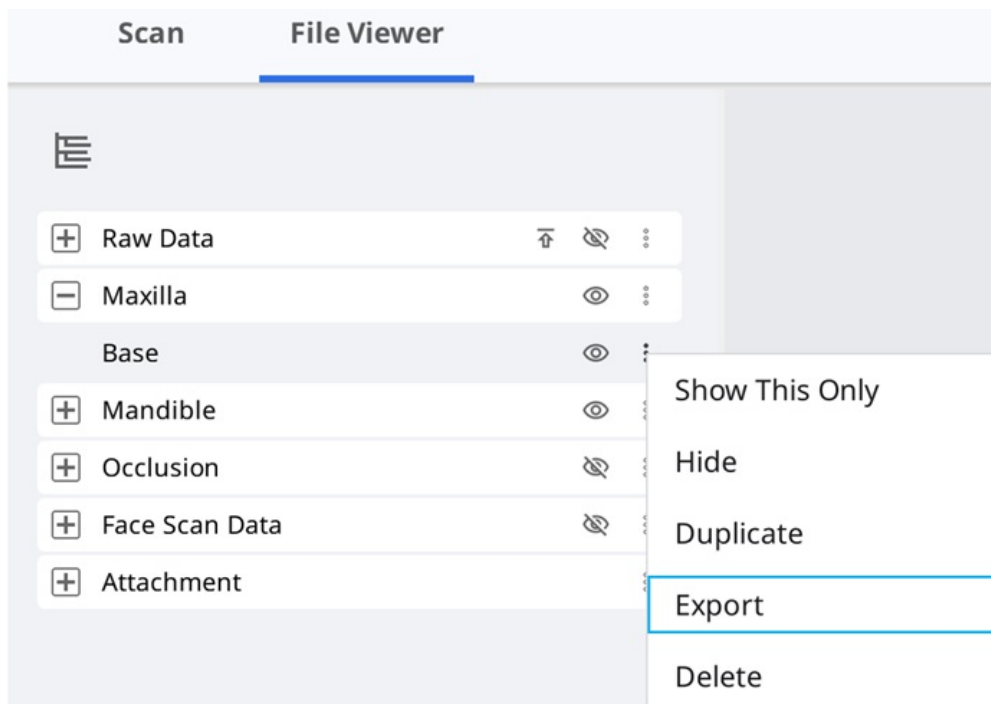

3. Het exporteervenster toont alleen de geselecteerde bestanden die u wilt exporteren.

Export Files in This Case

Options File List

☒

☒ Maxilla

☒ Pre-Op
 ☒ Base
 ☒ Scan Body Base

☒ Mandible

☒ Pre-Op
 ☒ Base
 ☒ Scan Body Base

☒ Occlusion

☒ First Occlusion

☐ Compress Files
 ☐ Combine Individual Mesh
 ☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

- Klik ten slotte op "Exporteren".

Marginale lijn exporteren


Medit Scan for Clinics biedt een functie om de marginale lijn te maken en Medit Link kan de marginale lijn naar het CAD-programma overbrengen.

Exporteer marginale lijn als kleur

Over het algemeen converteert Medit Link de marginale lijn als kleur en exporteert het resultaat samen met de bovenkaak of onderkaak. U kunt de marginale lijn in hun cad maken met verwijzing naar de kleurinformatie.

Voorbeeld:

Bovenkaak

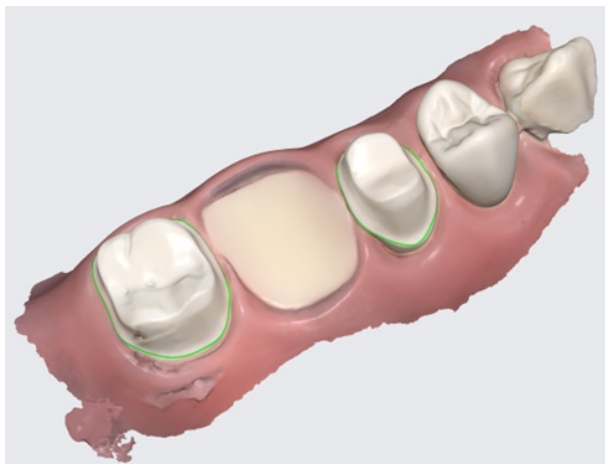

Resultaat met de marginale lijn als kleur

iOpmerking

Deze functie is beschikbaar voor formaten die kleurinformatie bevatten, zoals meditMesh, OBJ en PLY. De marginale lijn kan niet worden omgezet in STL.

iOpmerking

CAD-type en 3shape ondersteunt deze functie niet.


Exporteer marginale lijn als bestand

In het geval van Exocad exporteert Medit Link de marginale lijn naar "~margin.xyz" die rechtstreeks in exocad kan worden geïmporteerd.

U kunt dit bestand zonder extra werk in exocad gebruiken.

Voorbeeld:

Bovenkaak	Marginale lijn
-----------	----------------

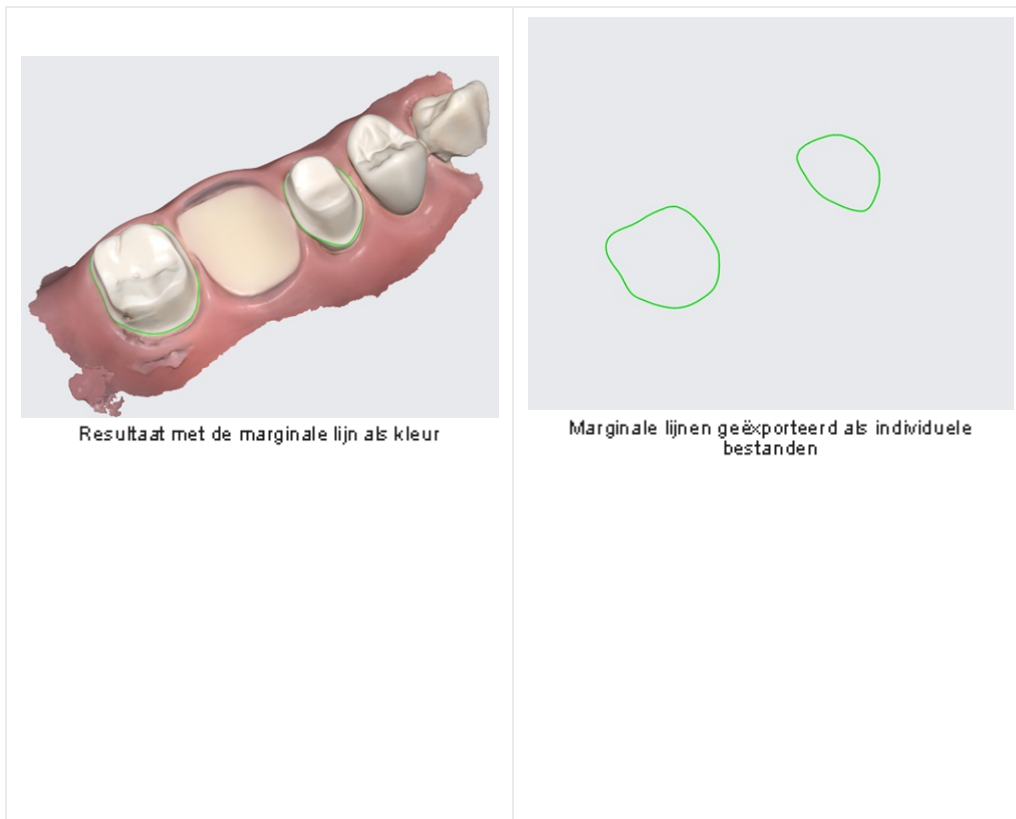

Dossierlijst exporteren als CSV

Medit Link biedt de optie om de dossierlijst in CSV-formaat te exporteren.

U kunt de dossierlijst met basisinformatie exporteren en dossiers eenvoudig beheren.

De functie "Naar CSV exporteren" is beschikbaar in het volgende menu van de Medit link-applicatie.

- In Box
- Work Box

De dossierlijst exporteren

1. Ga naar In Box of Work Box.
2. Selecteer de dossiers die u wilt exporteren.

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐	Pending test's Case	test	2022-09-29 오전 8:13	2022-10-01 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10413603	
☐	Pending test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10374886	
☐	Pending test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10374864	
☐	Accepted test's Case	test	2022-09-13 오전 2:43	2022-09-15 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10314293	
☒	Pending test's Case	test	2022-09-05 오전 7:31	2022-09-07 오전 10:30	Wonhoanchai-Clinic	10268220	
☐	Case Completed Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 오전 8:51	2021-07-08 오전 8:50	Wonhoanchai-Clinic	8579990	500 KRW
☒	Case Completed test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 오후 4:10	2021-09-07 오후 4:10	Wonhoanchai-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒	Case Completed test's Case memo	test	2022-04-08 오후 11:...	2022-04-15 오후 7:45	Wonhoanchai-Clinic	9569817	

3. Klik bovenaan op de knop "Uitgebreid menu" om de optie "Exporteren naar CSV" te selecteren.



4. Bepaal het pad en de bestandsnaam en sla de resultaten op.

Bestanden van Medit Link Web downloaden

Medit Link biedt een downloadfunctie.

Als u de resultaatbestanden wilt ontvangen zonder de Medit Link-applicatie te installeren, kunt u de bestanden downloaden via de Medit Link-webservice.

!Opmerking


De gegevens moeten worden geüpload op de Medit Cloud om de bestanden van het web te downloaden.

De downloadfunctie is beschikbaar in het volgende menu van de Medit Link-webservice.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

De "Download"-knop bevindt zich rechtsboven.

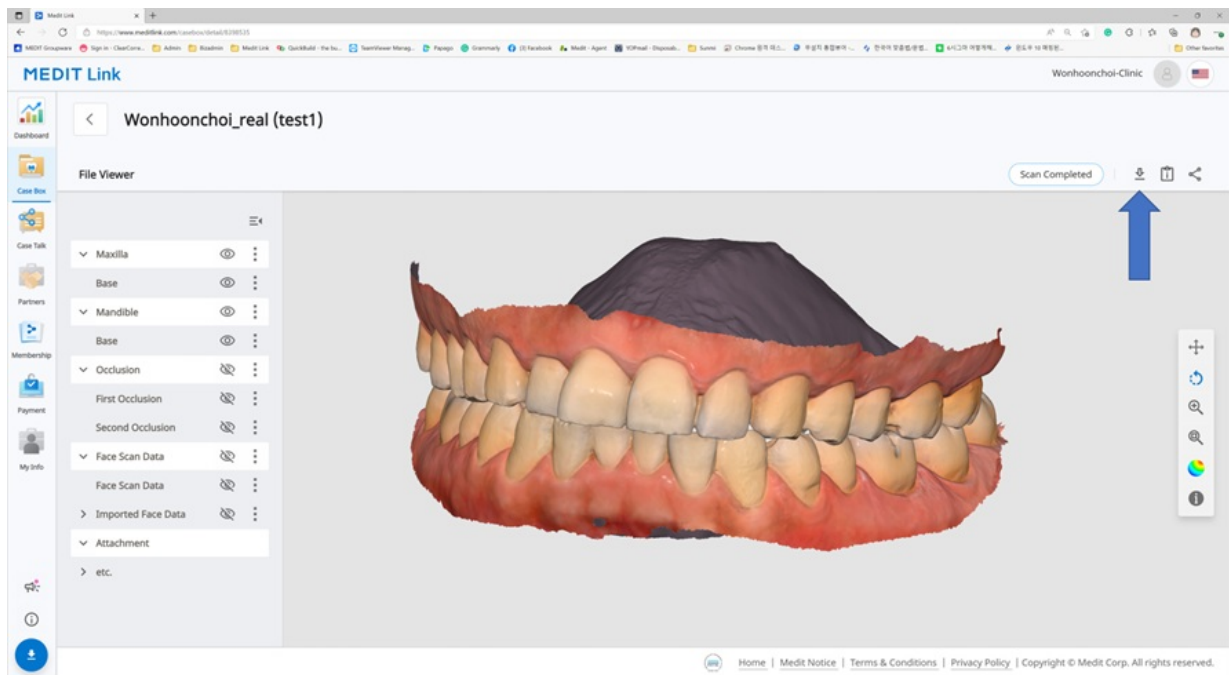

Web Viewer

Wanneer u het dossier deelt via Case Talk, kunt u instellen of u downloaden toestaat of niet.

Als u "Downloadtoestemming verlenen" aanvinkt en het dossier deelt, kunnen alle gebruikers die verbinding maken met de gedeelde link de bestanden downloaden.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

In de Web Viewer vindt u rechtsboven het pictogram "Downloaden".

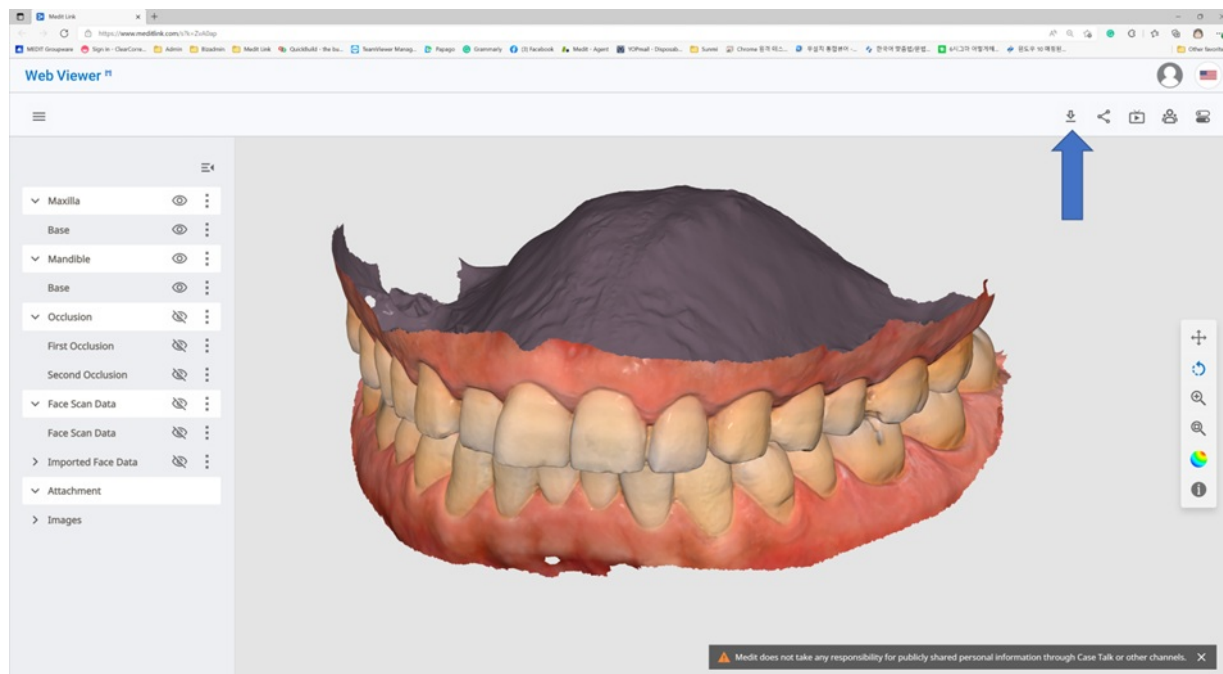

Hoe downloaden

1. Klik op "Downloaden".



2. Selecteer het meshformaat in het downloaddialogvenster.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Klik vervolgens op "OK".

Dossiers bestellen/beheren

U kunt eenvoudig een dossier bestellen met gegevens die zijn verkregen uit gekoppelde programma's en de bijbehorende gegevens van de gebruiker.

Dossiers bestellen

U kunt een order plaatsen voor uw partners in Case Box.

1. Klik op de "Order"-knop.
2. Controleer de informatie die nodig is voor uw order.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:

- Order** (Title)
- General** (Selected tab), **Order List**, **File List**
- Partner**: WonhoonChoi_Lab_Stage
- Partner Information**: WonhoonChoi_Lab_Stage, Seoul, KR, [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea, 01026088546
- Case Name**: mandibluar movement - Clone - Clone
- Patient Name**: Test Occlusion
- ☒ **Share patient information**
- Requested Delivery Date**: 2023-04-13
- Delivery Time**: AM 8:00 to PM 8:00, currently set at 오전 8:15
- Memo**: (Empty text area)
- Tags**: You can add the entered tag with Enter or Spacebar.
- ☒ **Include all occlusion relationships in the order**
- ☒ **Include Tags In The Order**
- Buttons**: Cancel, OK

3. Selecteer een partner.
4. Controleer de productinformatie in het tabblad "Orderlijst"
 - U kunt beslissen of u de naam van de patiënt wilt delen.
5. Kies de te bestellen bestanden in het tabblad "Bestandslijst"
6. Voer uw gewenste bezorgdatum in.
 - De standaardwaarde is ingesteld op 7 dagen na de orderdatum.
7. U kunt notities en tags toevoegen voor uw partner om specifieke details te vermelden.
8. Wanneer meerdere occlusale resultaten uit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale resultaten in één keer verzenden door "Alle occlusale relaties bestellen" aan te vinken.
9. Ga verder met uw order.
 - **Betaling overslaan**: Ga verder met de order zonder gebruik te maken van het betalingssysteem van Medit Link. Beschikbaar wanneer u bestelt bij een partner met de status "Gecontracteerd".
 - **Betalen**: Gebruik het betalingssysteem van Medit Link om de order uit te voeren. Beschikbaar wanneer u bestelt bij een gecontracteerde partner.
 - **OK**: Wij voeren de order uit zonder voorwaarden met betrekking tot de prijs van het

product. Beschikbaar wanneer u bestelt bij een partner met de status "Samenwerkingsverband".


Opmerking

De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Betaling overslaan
- Betalen


Order bevestigen (In Box)

- Accepteer de order bij ontvangst.
- Geaccepteerde orders worden doorgestuurd naar de Work Box.

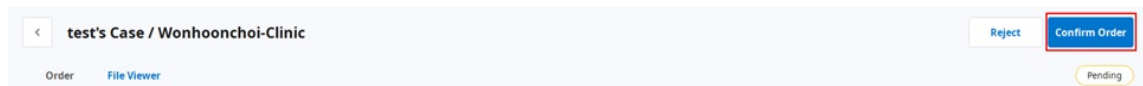


Order annuleren (Order Box)

- U kunt een order annuleren voordat uw partner deze accepteert.
- Geannuleerde dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

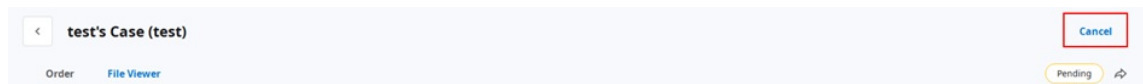

Order afwijzen (In Box)

- U kunt een ontvangen order afwijzen.
- Afgewezen dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

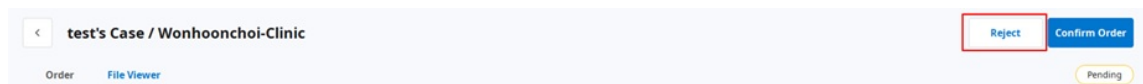

Bestelde dossiers controleren

U kunt de details van het dossier dat u in de Order Box heeft besteld controleren in het clinic-account. U kunt ook het dossier controleren dat u van het In Box in het lab-account heeft ontvangen.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
Total					USD 4.00

Order info	De volgende informatie kan in de order worden opgenomen: order-ID/patiëntnaam/accountnaam/scandatum/orderdatum/uiteerlijke bezorgdatum/memo. U kunt de details van het bestelde product en de bezorginformatie bekijken.
Orderlijst	De orderlijst toont de details van het bestelde product.
Verzending	Voer de verzendinformatie in/controleer deze.

Verzendinformatie invoeren (In Box)

Voer de verzendinformatie van het voltooide dossier in en begin met de verzending.

1. Klik op het tabblad "Verzending".
2. Voer de verzendinformatie in en klik op "Registreren".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company: Tracking Number:

Memo:

[Cancel](#) [Register](#)

3. De ingevoerde informatie wordt naar uw partner gestuurd.

Bezorgdatum beheren

U kunt de verwachte bezorgdatum instellen wanneer u een order plaatst. Deze informatie wordt doorgegeven aan uw partner.

De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)

- Wanneer u uit de Case Box bestelt, kunt u de gewenste bezorgdatum invoeren.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- De standaardwaarde is 7 dagen na de besteldatum.
- Voer de datum/tijd in waarop u de producten wilt ontvangen en ga verder met bestellen.
- U kunt de tijd eenvoudig instellen met behulp van de schuifbalk.

De verwachte bezorgdatuminstellen (Clinic-account)

- U kunt de verwachte bezorgdatum voor het bij In Box bestelde dossier invoeren.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Controleer de aangevraagde bezorgdatum bij de partner en wijzig de planning met de knop "Wijzigen".



2. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid. Indien nodig kunt u ook een opmerking achterlaten.
3. Klik op "Toepassen".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. De verwachte bezorgdatum en de notitie worden samen met de order verzonden.
 - U kunt de datum en notities bekijken in de Order Box.
 - U kunt de verwachte bezorgdatum wijzigen, waarna de wijzigingen worden doorgegeven aan uw partner.
5. Met de "Geschiedenis"-knop kunt u de geschiedenis van het dossier bekijken.



Dossiers voltooien

Voltooien (Work Box/In Box)


Zodra alle taken zijn uitgevoerd, drukt u op "Voltooien" om het dossier af te ronden.

Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails

U vindt de menuknop rechts van de knop Openen.



Voltooi het werk door op het menupictogram te klikken en "Gereed" te selecteren.

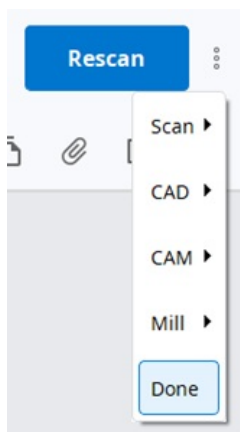


Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst

Wanneer u de dossiers uit de Work Box selecteert, vindt u bovenaan de lijst de uitgebreide menuknop.



U kunt als volgt meerdere dossiers voltooien:

1. Ga naar Work Box.
2. Selecteer alle dossiers om te voltooien.

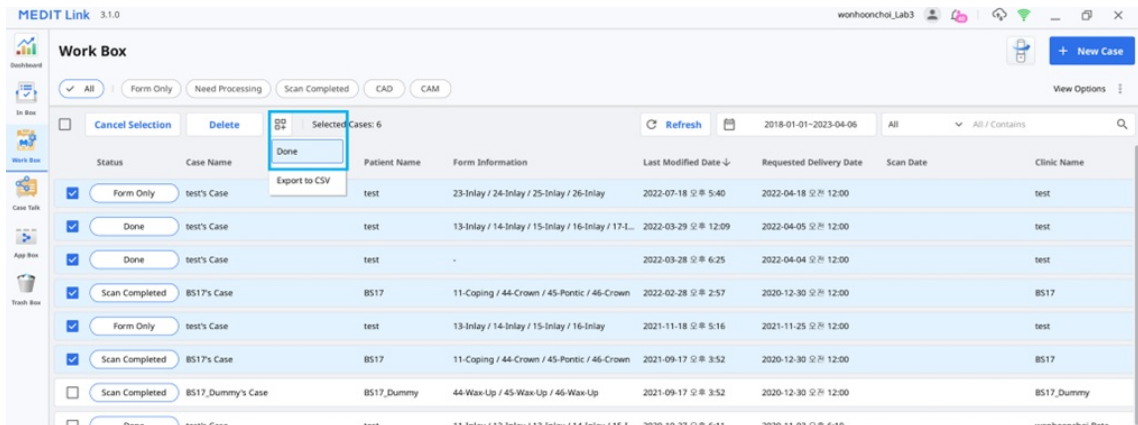

3. Klik op de knop "Uitbreid menu".




4. Selecteer "Gereed" in de lijst

Voltoeien (Case Box/Order Box)

Nadat het dossier van het laboratorium is voltooid, moet de kliniek het dossier bevestigen om het hele orderproces af te ronden.

Als het lab het werk voltooit, kan de praktijk de functie "Ontvangst bevestigen" in de Order Box vinden.

Als u hierop klikt, wordt het hele orderproces voltooid en wordt de status van het dossier gewijzigd in "Dossier afgerond".

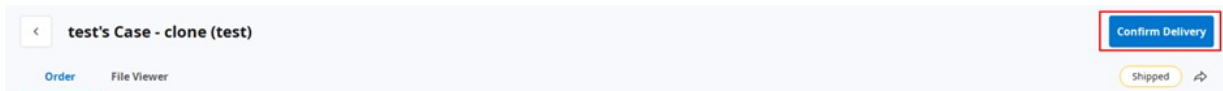

Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box

Voor dossiers die niet naar het lab zijn besteld, kunt u deze dossiers voltooien vanuit de Case Box.

1. Ga naar de Case Box.
2. Selecteer het dossier dat u wilt voltooien.

MEDIT Link 3.0.0 Wanhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

☐ Cancel Selection
 ☐ Delete
 ☒ Case Completed
 Items Selected: 4
 2018-01-01 ~ 2022-09-29
 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오후 8:45	
☐ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오후 8:13	2022-09-29 오후 7:56
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 10:41	
☒ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오후 9:27	
☒ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오후 9:27
☐ Scan Completed	Preop 사용원 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 8:53

3. Klik op de knop "Uitgebreid menu".




4. Kies "Case Completed."

Communiceren met behulp van tags

U kunt extra informatie aan uw dossier toevoegen door gebruik te maken van tags en deze delen met uw partners.

Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier

U kunt tags invoeren wanneer u een nieuw dossier aanmaakt of dossierinformatie bewerkt.

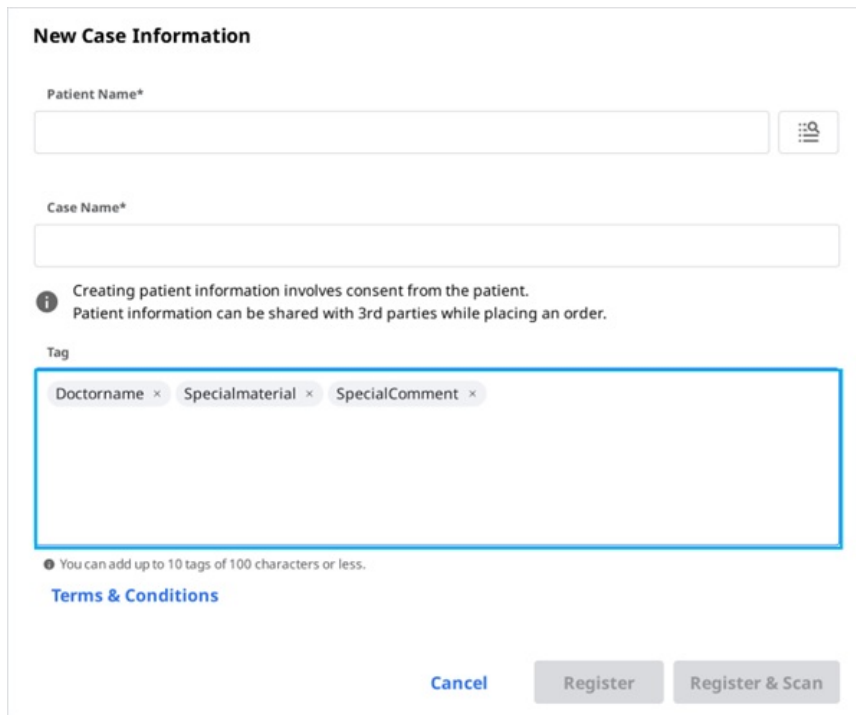

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

U kunt de tags die u eerder hebt gebruikt gemakkelijk opzoeken en selecteren.

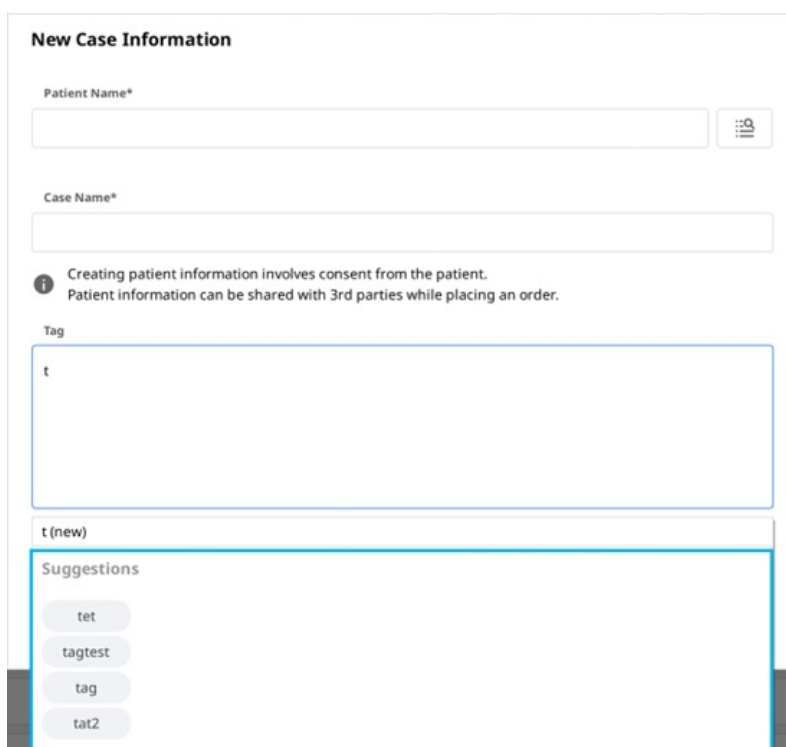

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Voeg tags toe bij het bestellen

U kunt tijdens het bestellen tags controleren en bewerken in het ordervenster.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Controleer tags voor dossierdetails

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Edit

Doctorname Specialmaterial SpecialComment

