

USER GUIDE

Medit Link

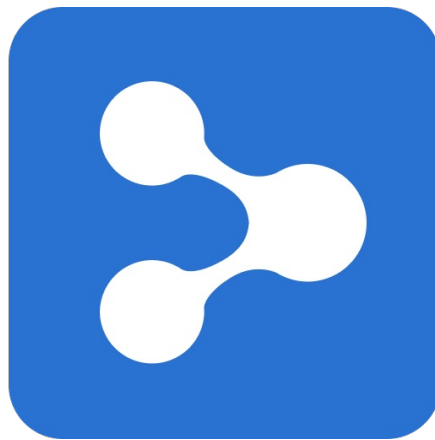


Table of Contents

Medit Link

Introduzione	6
Medit Link	6
Panoramica del servizio	6
Servizio Cloud	7
Piattaforma di gestione del flusso di lavoro con sistema di ordinazione	7

Medit Link > Installazione

Requisiti di sistema	9
Requisiti di sistema per Windows	9
Requisiti di sistema per macOS	9
Requisiti di sistema per il Web Service	9
Consigliati per i browser	9
Minimi per dispositivi mobili	9
Installazione su Windows	10
Installazione su macOS	12
Medit Link viene installato come pacchetto con Medit Scan for Clinics.	12

Medit Link > Come iniziare

Registrati e accedi	16
Sito web Medit Link	16
Registrati	16
Login e pagina di benvenuto	18

Medit Link > Medit Link Web

Panoramica	20
Dashboard	21
Panoramica dashboard	21
Medit Insights	21
Iscrizione a Medit Insights	22
Annullare l'iscrizione a Medit Insights	23
Case Box/Work Box	24
Filtraggio dei casi	24
Filtro per stato	24
Filtro per durata	24
Filtro per ricerca	25
Dettagli del caso	25
Order Box/In Box	27
Dettagli ordine	27
Schede in Order Box/In Box	27
Case Talk	28
Creazione di un Case Talk	28
Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione	29
Dettagli Case Talk	31
Web Viewer	32
Note	33
Commenti	33
Condivisione della schermata in tempo reale	34
Albero dei dati	34
Controlli dell'albero dei dati	34
Controlli del modello 3D	35

Collaboratori	37
Cerca collaboratori	37
Elenco dei miei collaboratori	37
Invita il collaboratore	38
Abbonamento	39
Abbonamento	39
Il mio piano	39
Archiviazione cloud	40
Sottoscrivere l'abbonamento	41
Annullare l'abbonamento	42
Informazioni di fatturazione	44
Come aggiungere un metodo di pagamento	44
Come cambiare un metodo di pagamento	46
Riscatta	47
Registrare il codice di riscatto	47
Attivare il codice di riscatto	48
Pagamento	50
Dettagli pagamento (account Clinica & Laboratorio)	50
Informazioni sul conto di pagamento (solo account Laboratorio)	50
Le mie informazioni	51
Il mio account	51
La mia organizzazione (solo account Amministratore)	51
Il mio scanner	52
Il mio tariffario (solo account Amministratore laboratorio)	52
Altro menu	53
Avvisi & aggiornamenti	53
Informazioni Medit	53
Scarica Medit Link App	53

Medit Link > Medit Link App

Panoramica	55
Panoramica box	55
Barra del titolo	57
Le mie informazioni	57
Notifiche	57
Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi	58
Upload	59
Download	59
Stato della rete	60
Menu	61
Dashborad	61
Case Box/Work Box	61
Schede in Case Box/Work Box	62
Funzioni in Case Box/Work Box	62
Order Box/In Box	63
Schede in Order Box/In Box	64
Case Talk	64
App Box	64
Trash Box	65
Impostazioni	66
Gestione del paziente	66
Aggiungere un nuovo paziente	66
Rimuovere il paziente	67
Unire i pazienti	67
Avvisi & aggiornamenti	68
Vai su Medit Link Web	68

Informazioni Medit	68
Impostazioni	69
Generale	69
Gestione dell'archiviazione	70
Imposta il periodo	70
Archiviazione locale	70
Archiviazione cloud	71
Imposta programma collegato	71
Opzioni di esportazione	72
Strumento di conversione dei casi	73
Come utilizzare lo strumento di conversione dei casi	73
Opzioni proxy	75
Informazioni	75
Manuale utente	76
Visualizzatore file	77
Albero dei dati	77
Strumenti di controllo del modello	77
Controllo del modello 3D	77
Controllo delle immagini 2D	78
Strumenti di funzione	79
Acquisizione delle immagini e Promemoria	79
Acquisizione ortodontica	79
Riempi i vuoti	80
Ritaglio	81
Ottimizza l'allineamento dell'occlusione	83
Movimento mandibolare	85
Gestire i dati dell'occlusione multipla nel visualizzatore file	86
Come gestire più risultati	86
Opzioni di visualizzazione	87
Filtri di stato	87
Elementi della tabella	88
Tipo di vista	89
Vista galleria	90
Vista elenco	91
Raggruppamento	91
Ordinamento	92
Filtraggio e ricerca	94
Filtro per data	94
Funzionalità di ricerca avanzata	94

Medit Link > Flusso di lavoro

Creare/modificare/clonare/eliminare il caso	96
Creare i casi	96
Creare un caso in Case Box (Clinica)	96
Creare un caso in Work Box (Laboratorio)	97
Modificare i casi	97
Modificare un caso in Case Box (Clinica)	97
Modificare un caso in Work Box (Laboratorio)	98
Clonare i casi	99
Clonare un caso in Case Box (Clinica)	99
Clonare un caso in Work Box (Laboratorio)	99
Eliminare i casi	99
Eliminare un caso (Clinica e Laboratorio)	100
Informazioni del modulo	101
Registrare le informazioni del modulo in Case Box	101
Inserire nella scheda Modulo	101

Inserire nella scheda CAD	101
Registrare le informazioni del modulo in Work Box	101
Inserire nella scheda Modulo	101
Inserire nella scheda CAD	102
Collegare i denti nel ponte	102
Impostare le opzioni di scansione	102
Opzioni generali	102
Opzioni per denti	103
Aggiungere ai preferiti	103
Aggiungere ai preferiti	103
Gestire i modelli dei preferiti	103
Lavorare su scansione/CAD	105
Processo di scansione	105
Processo CAD	105
Ottenere i file dei risultati	106
Esportare i file dei risultati di scansione	106
Esportare i file selezionati	107
Esportare la linea di margine	108
Esportare la linea di margine come colore	108
Esportare la linea di margine come file	109
Esportare l'elenco dei casi come CSV	110
Come esportare l'elenco dei casi	110
Scaricare i file da Medit Link Web	111
Case Box/Work Box	111
Web Viewer	111
Come eseguire il download	112
Ordinare/gestire gli ordini	114
È possibile ordinare facilmente un caso con i dati acquisiti dai programmi collegati e i dati allegati dall'utente. ..	114
Ordinare i casi	114
Confermare l'ordine (In Box)	115
Annullare l'ordine (Order Box)	115
Rifiutare l'ordine (In Box)	115
Controllare i casi ordinati	115
Inserire le informazioni di spedizione (In Box)	116
Gestire la data di consegna	116
Impostare la data di consegna richiesta (account Clinica)	116
Completare i casi	118
Completare (Work Box/In Box)	118
Completare un caso dai dettagli del caso	118
Completare i casi multipli dall'elenco dei casi	119
Completare (Case Box/Order Box)	119
Completare un caso non ordinato in Case Box	119
Comunicare utilizzando i tag	121
Aggiungere tag quando si crea un nuovo caso	121
Aggiungere tag quando si ordina	122
Controllare i tag in Dettagli del caso	122

Introduzione

Medit Link

Medit Link è uno strumento di collaborazione progettato per agevolare la comunicazione tra cliniche e laboratori, al fine di fornire un flusso di lavoro ottimizzato per ciascuna delle parti.

Offre funzionalità differenziate in base al tipo e alle autorizzazioni di ciascun account. Il programma fornisce un'interfaccia utente intuitiva per gestire il flusso di lavoro, dalla scansione con scanner orali e di modelli, all'ordinazione di casi e alla progettazione e realizzazione di protesi.

Medit Link consiste in un servizio web e un'applicazione informatica.

Panoramica del servizio

		Web	App
		• Registrazione e gestione dell'account • Ricerca • Ricerca e gestione dei collaboratori • Condivisione dei casi tramite Web Viewer con un link condivisibile • Accesso ai casi creati dall'app • Gestione degli ordini	• Inserimento delle informazioni del modulo • Scansione • Possibilità di effettuare/ricevere ordini ed eseguire pagamenti • Collegamento con CAD • Gestione dei pazienti
Clinica	Amministratore	Ricerca e gestione dei collaboratori e della propria organizzazione, gestione delle informazioni di pagamento e condivisione dei casi. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Collaboratori - Abbonamento - Pagamento - Le mie informazioni	Inserimento delle informazioni del modulo, scansione, collegamento con CAD, possibilità di effettuare ordini e pagamenti, gestione dei pazienti. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Gestione del paziente
	Membro	- Case Box - Case Talk - Le mie informazioni	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box

Laboratorio	Amministratore	Ricerca e gestione dei collaboratori e della propria organizzazione, gestione delle informazioni di pagamento e condivisione dei casi. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Collaboratori - Abbonamento - Pagamento - Le mie informazioni	Inserimento delle informazioni del modulo, scansione, collegamento con CAD, possibilità di ricevere/gestire gli ordini. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Membro	- Work Box - Case Talk - Le mie informazioni	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Pagamento

Servizio Cloud

Medit Link supporta l'upload/download automatico di database e file tramite AWS (Amazon Web Services).

I dati archiviati nel cloud vengono sincronizzati automaticamente con i computer di più utenti dell'organizzazione, in modo che questi possano accedere agli stessi dati da qualsiasi computer in qualsiasi momento. Il backup e il ripristino basati su cloud mantengono al sicuro tutti i dati dell'utente. I dati sono al sicuro anche in caso di perdita di dati provocata da un guasto improvviso del computer.

Il servizio cloud consente ai dentisti e ai laboratori partner di condividere rapidamente i dati senza il fastidio di inviare e-mail o trasferire manualmente le scansioni. Tutti i dati, incluse le informazioni sui pazienti, vengono crittografati, archiviati e trasmessi in modo sicuro. Medit è conforme alle leggi e ai regolamenti medici come HIPAA e GDPR.

Piattaforma di gestione del flusso di lavoro con sistema di ordinazione

Medit Link offre il proprio sistema di ordinazione e pagamento.

- Medit Link consente di creare contratti tra odontoiatri e laboratori odontotecnici e di condividere i dati in modo semplice e veloce.
- È possibile controllare e gestire lo stato dell'ordine.

Il sistema supportato da carta di credito opera con i moduli di pagamento delle piattaforme di pagamento online, come Stripe (www.stripe.com) e l'mPort (<http://www.iamport.kr>), rendendo i servizi di pagamento facili e convenienti.

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- **Pagamento**

Requisiti di sistema

Nota

Fare riferimento ai requisiti di sistema per Medit Scan for Clinics e Medit Scan for Labs se si desidera utilizzare il software di scansione con lo scanner.

Requisiti di sistema per Windows

	Computer fisso e portatile
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz o superiore
RAM	16 GB o superiore
Scheda grafica	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) o superiore, o scheda video AMD equivalente
SO	Windows 8 64 Bit (non disponibile in 32 Bit) o superiore

Requisiti di sistema per macOS

	Mac
Processore	M1 con 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB o superiore
SO	Monterey 12

Requisiti di sistema per il Web Service

Consigliati per i browser

	Browser
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimi per dispositivi mobili

Tipo	Android	iOS
Dispositivo	Equivalente o superiore a Galaxy S7	Equivalente o superiore a iPhone 7
SO	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB o superiore	2 GB o superiore
AP	Superiore a Snapdragon 710	A10 Fusion


Installazione su Windows

Medit Link viene installato come pacchetto con i programmi di acquisizione della scansione: Medit Scan for Clinics e Medit Scan for Labs.


1. Eseguire Medit_LinkSetup.exe.
2. Selezionare una lingua per l'installazione.
3. Selezionare la cartella per l'installazione di Medit Link. Leggere e accettare i termini e le condizioni della licenza, quindi cliccare su "INSTALLA".

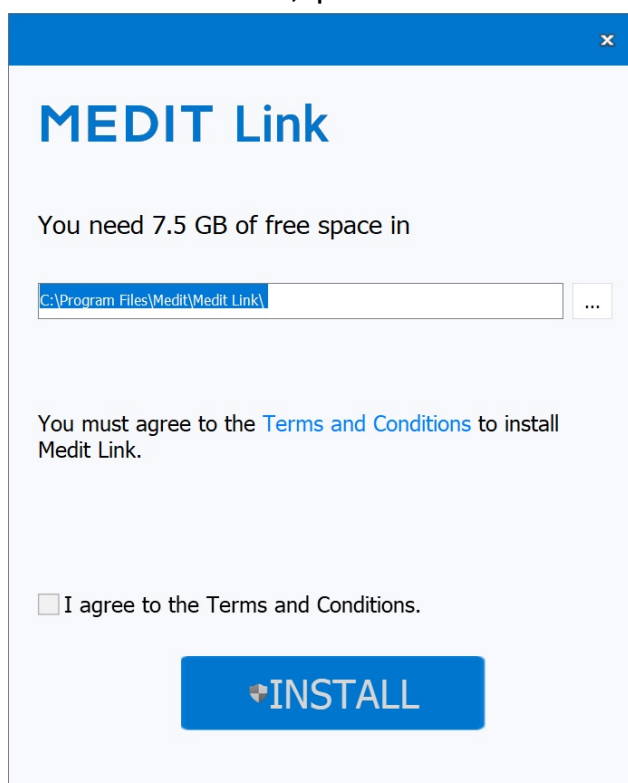

4. Assicurarsi che il cavo dello scanner sia scollegato dal computer prima di procedere al passaggio successivo. L'installazione potrebbe non avanzare se lo scanner è collegato al PC.
5. Il programma verrà installato automaticamente. Potrebbero volerci alcuni minuti. Non spegnere o scollegare il PC prima che l'installazione sia stata completata.

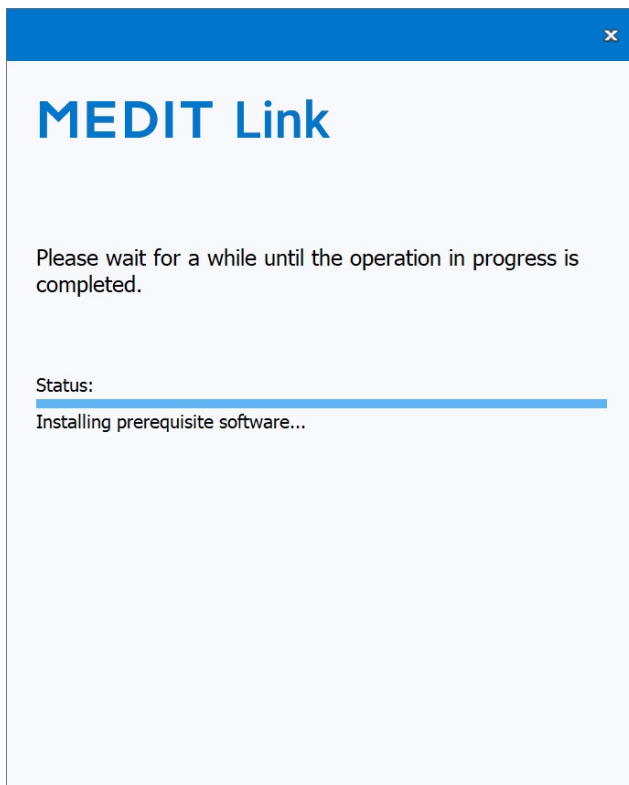

6. Una volta completata l'installazione, riavviare il PC. Se non si dispone dello scanner, è possibile procedere senza riavviare il PC.

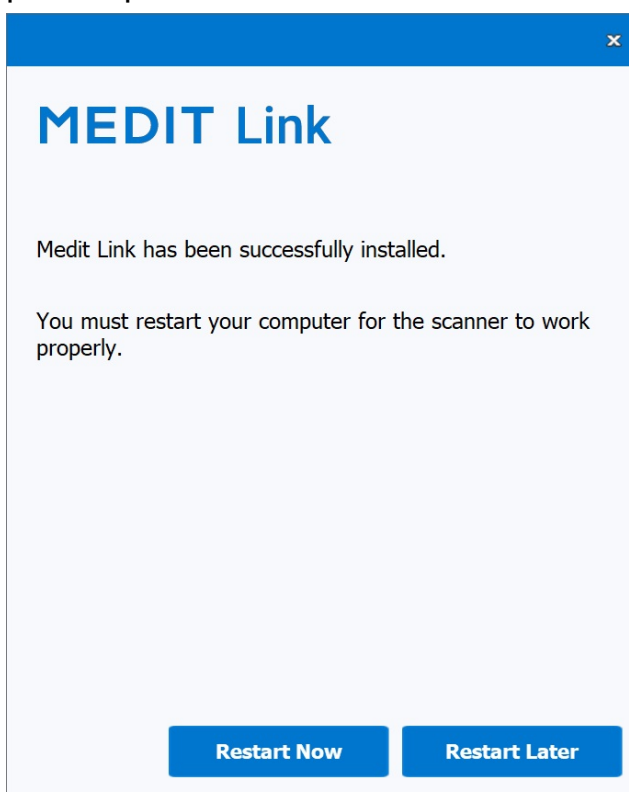


iNota

Se non si riavvia il PC al termine dell'installazione, lo scanner potrebbe non funzionare correttamente.


Installazione su macOS

Medit Link viene installato come pacchetto con Medit Scan for Clinics.


1. Eseguire Medit_Link_x.x.x.pkg e cliccare su "Continua".

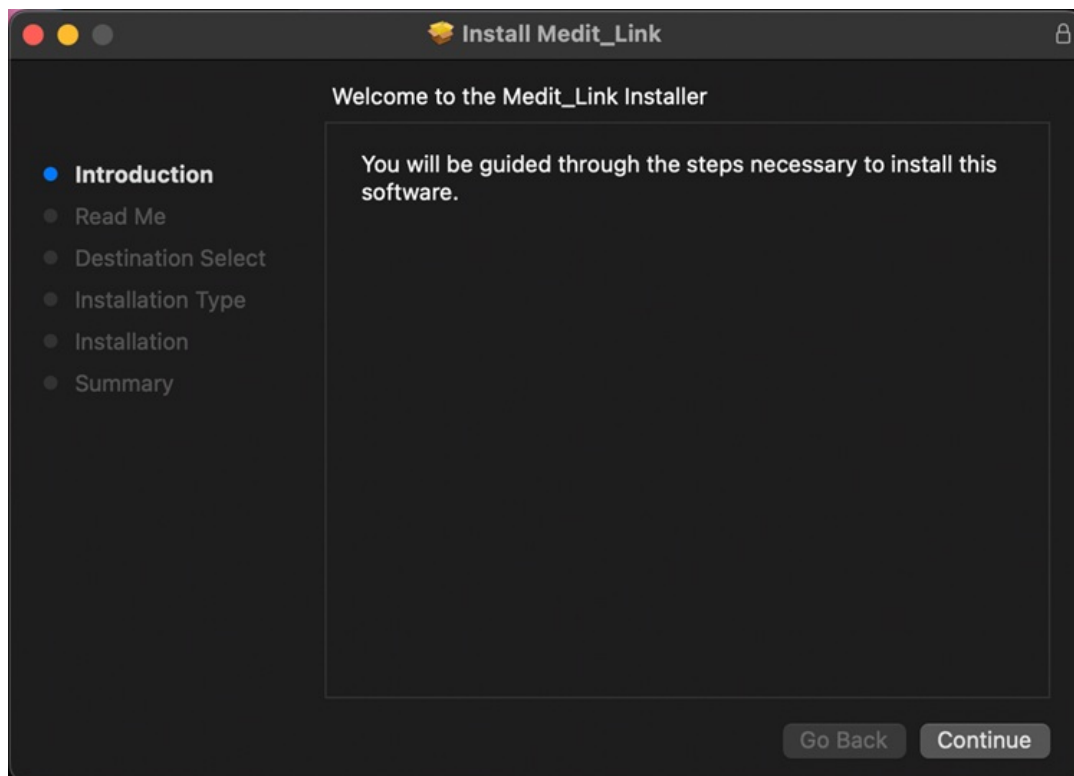


2. Leggere il Contratto di licenza per l'utente finale e cliccare su "Continua".

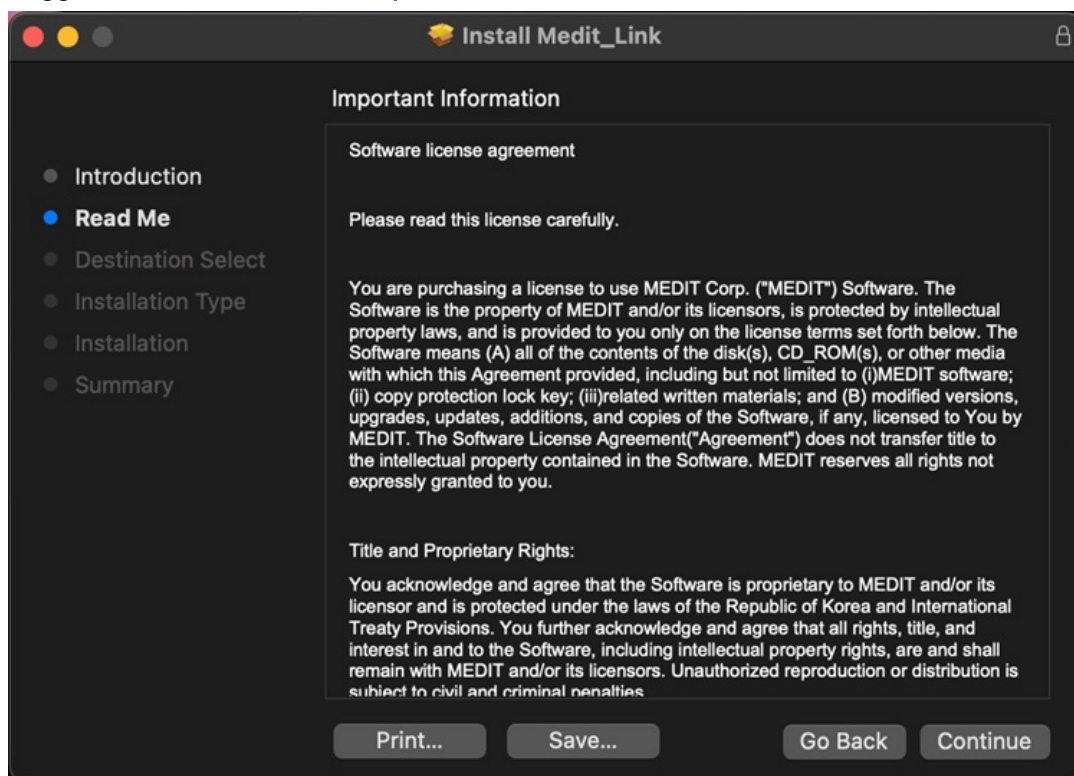

3. Selezionare il disco d'installazione e cliccare su "Continua".

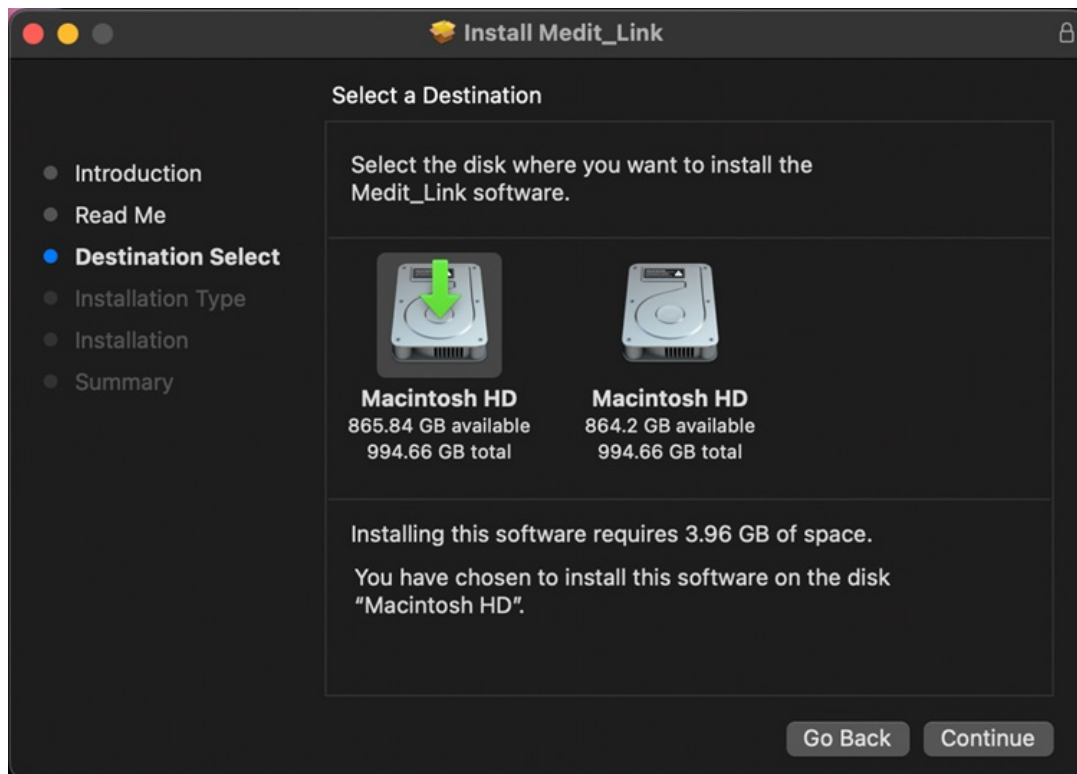


4. Cliccare su "Cambia percorso di installazione..." per cambiare la destinazione dell'installazione.

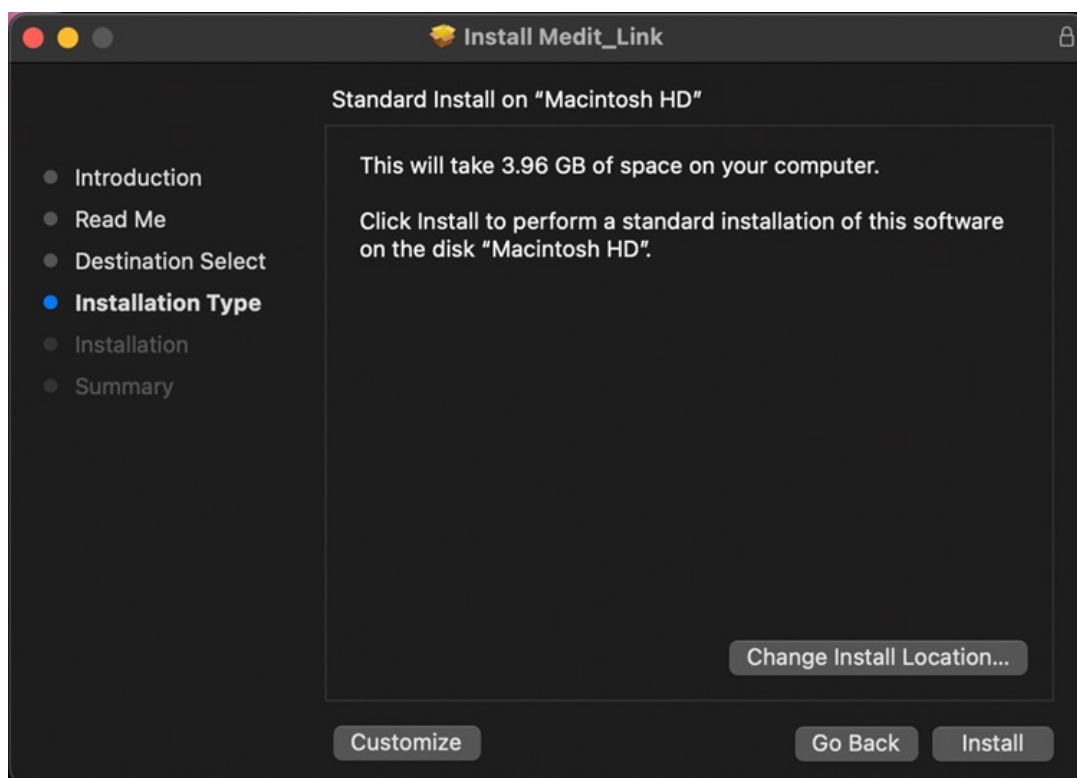


5. Cliccare su "Installa" e, se richiesto, digitare la password del proprio Mac per autorizzare l'installazione.



6. Attendere il completamento dell'installazione.

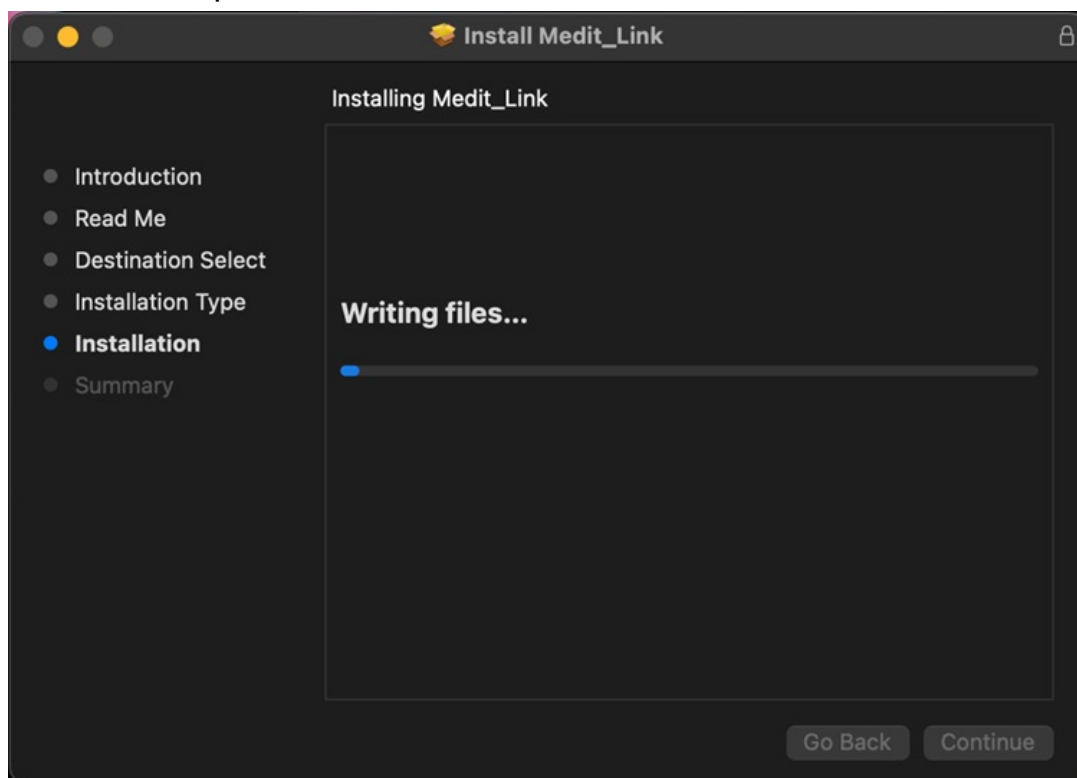

7. Cliccare su "Chiudi" per uscire dalla finestra di installazione.

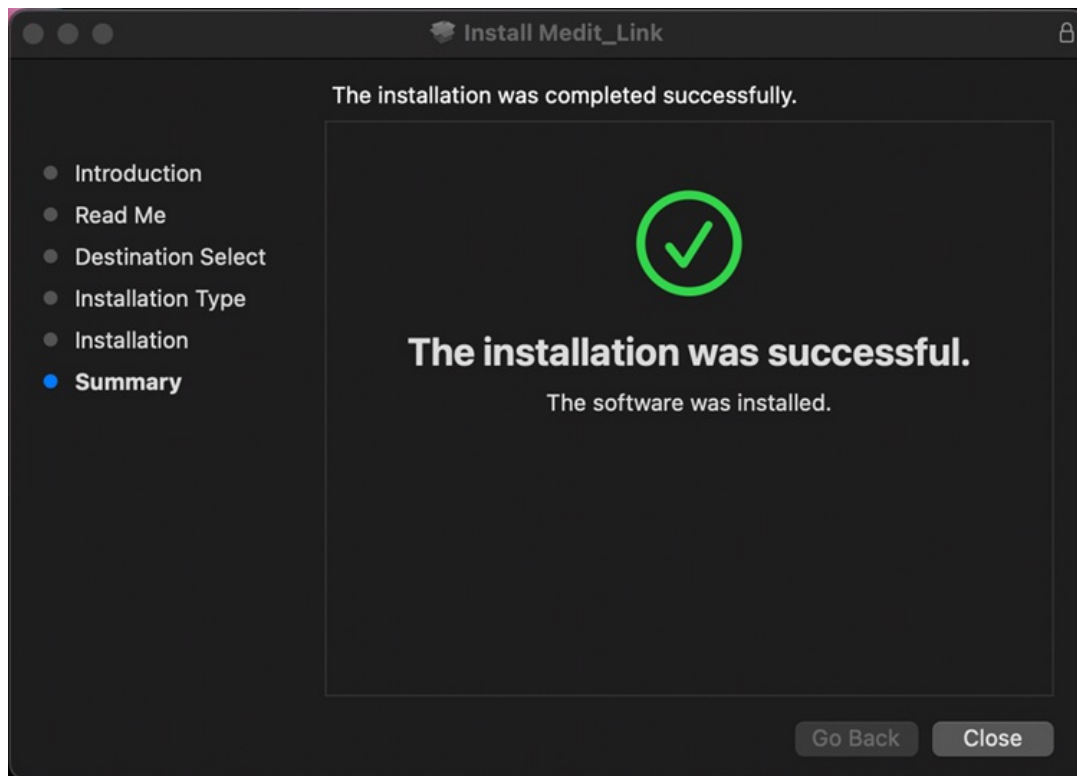

Registrati e accedi

Sito web Medit Link

Registrati al servizio Medit Link su www.meditlink.com.



Registrati

Per utilizzare il servizio Medit Link è necessario registrare un account. È possibile utilizzare le funzionalità presenti in Medit Link dopo aver creato un account come clinica o laboratorio.

Gli utenti possono scegliere uno di questi quattro tipi di account per registrarsi e utilizzare il servizio con funzionalità e privilegi completi o limitati, a seconda della tipologia di account.

- Clinica - Amministratore
- Clinica - Membro
- Laboratorio - Amministratore
- Laboratorio - Membro

Di norma, l'amministratore è un rappresentante dell'organizzazione dell'utente e avrà pieno accesso a tutte le funzioni e servizi offerti da Medit Link. Al contrario, l'account membro ha un accesso limitato.

Per registrarsi, seguire questi passaggi:

1. Cliccare su "Non hai ancora un account? Registrati" sulla pagina di login.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. Dopo aver letto le descrizioni fornite, cliccare sul pulsante "Registrati" per la tipologia di account desiderato.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.


Register

3. Inserire il nome della clinica o del laboratorio. Successivamente, a seconda della tipologia di account desiderato, procedere come segue:
 - Se ci si sta registrando amministratore, cliccare su "Verifica disponibilità" per vedere se il nome inserito è disponibile.
 - Se ci si sta registrando come membro, cliccare su "Cerca". L'amministratore deve registrare l'organizzazione prima che l'utente si registri.
4. Compilare il resto del modulo di registrazione e cliccare su "Registrati". Verrà inviata un'e-mail di verifica alla propria casella di posta elettronica.

5. Per completare la procedura di registrazione, verificare il proprio indirizzo e-mail utilizzando il link ricevuto.

Login e pagina di benvenuto

1. Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password nella pagina di login e cliccare su "Login".

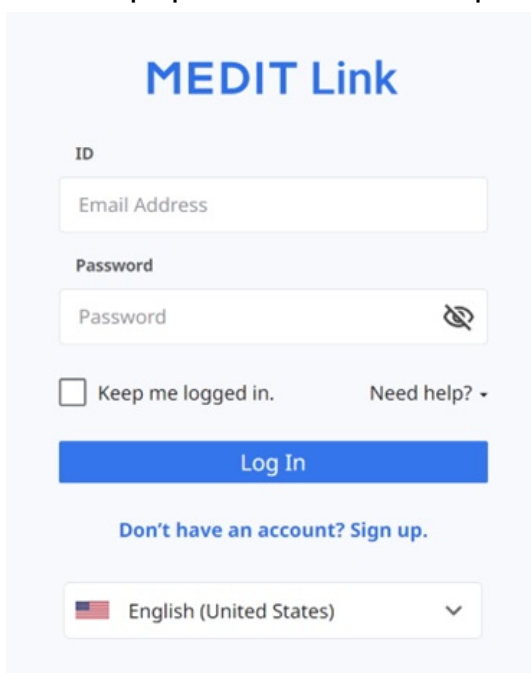


The login form for MEDIT Link is displayed on a light blue background. At the top, the text "MEDIT Link" is shown in a large, bold, blue font. Below this, the label "ID" is positioned above a white input field with the placeholder text "Email Address". Underneath, the label "Password" is above another white input field with the placeholder text "Password" and a small eye icon to its right. Below the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in." and a link "Need help? -". A prominent blue button labeled "Log In" is centered below these elements. Under the button, a link reads "Don't have an account? Sign up.". At the bottom, there is a language selection dropdown menu showing "English (United States)" with a small flag icon and a downward arrow.

2. Qualora non siano state inserite le informazioni sull'organizzazione, verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo.

Nota

Per utilizzare i servizi di Medit, devono essere inserite le informazioni sulla propria organizzazione utilizzando l'account amministratore.

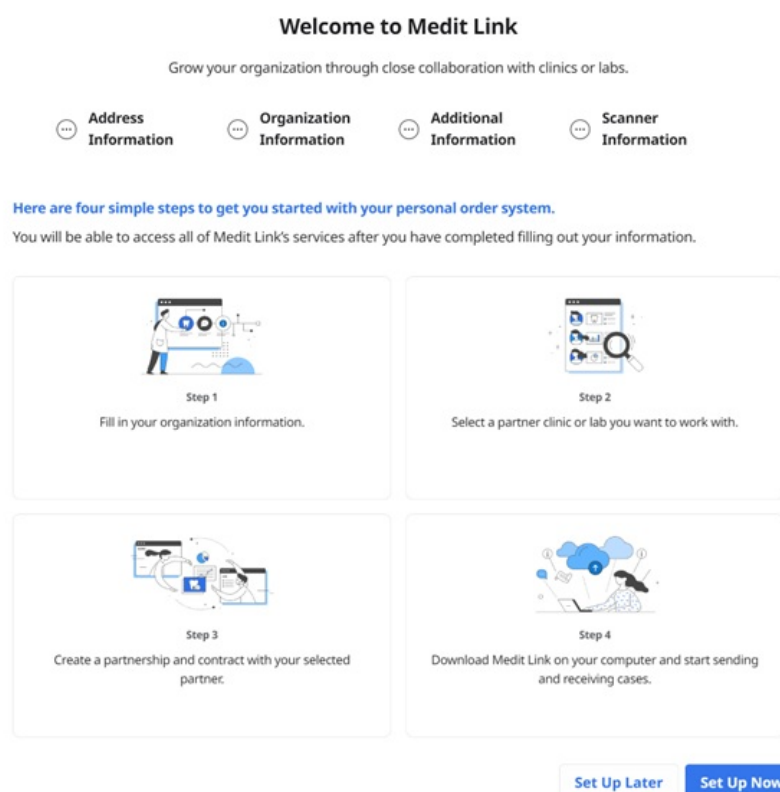

The onboarding screen is titled "Welcome to Medit Link" in bold. Below the title, a subtitle reads "Grow your organization through close collaboration with clinics or labs." A horizontal progress bar with four steps is shown: "Address Information", "Organization Information", "Additional Information", and "Scanner Information". Below this, a blue link states: "Here are four simple steps to get you started with your personal order system." A paragraph follows: "You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information." The screen then displays four steps in a 2x2 grid, each with an illustration and a description:

- Step 1:** Fill in your organization information. (Illustration: A person at a computer with a bar chart and a globe.)
- Step 2:** Select a partner clinic or lab you want to work with. (Illustration: A magnifying glass over a list of items.)
- Step 3:** Create a partnership and contract with your selected partner. (Illustration: A handshake over a document with a magnifying glass.)
- Step 4:** Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases. (Illustration: A person at a computer with a cloud and a download arrow.)

At the bottom right, there are two buttons: "Set Up Later" and "Set Up Now".

3. Cliccare su "Configura ora" e inserire, passo dopo passo, le informazioni sull'indirizzo, le informazioni sull'organizzazione, informazioni aggiuntive e informazioni sullo scanner.

Se si accetta di ricevere informazioni di marketing in fase di registrazione, si riceveranno informazioni utili sul prodotto e il servizio dal produttore.

4. Le informazioni inserite nella pagina di benvenuto possono essere modificate in qualsiasi momento in Le mie informazioni > La mia organizzazione in Medit Link Web.

Panoramica


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link application. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main area shows a list of cases with filters for status (All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed) and a date range (2023-01-06 to 2023-04-06). The table lists 18 total cases, with the following data visible:

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	Share
Scan Completed	mandibular movement - Clone - ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

Dashboard

Panoramica dashboard

È possibile consultare le statistiche per l'intero lavoro svolto su Medit Link tramite grafici e diagrammi visualizzabili, sia in Medit Link App che su Medit Link Web.

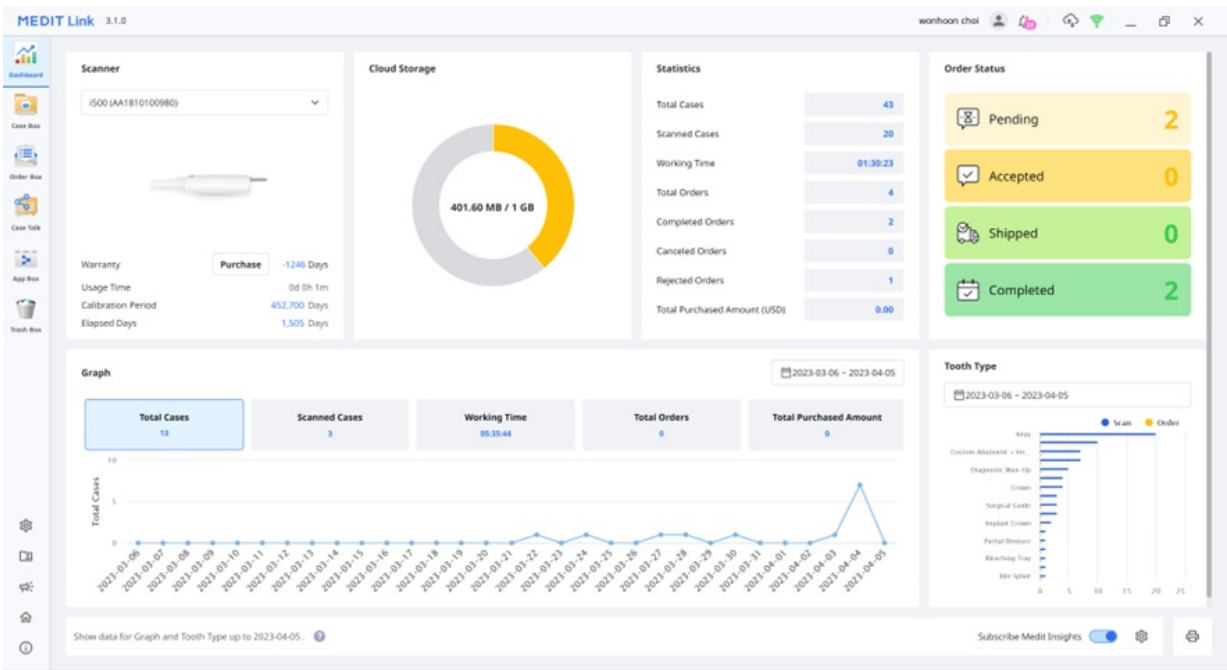

I grafici e i diagrammi presenti nella dashboard mostrano le statistiche relative all'intero lavoro svolto in Medit Link.

Scanner	Fornisce informazioni sugli scanner attivi, tra cui la garanzia, il tempo di utilizzo dello scanner, l'intervallo di calibrazione e il tempo trascorso dalla calibrazione.
Archiviazione cloud	Mostra la capacità totale del cloud e la quantità in uso.
Statistiche	Fornisce statistiche sui casi in base allo stato del lavoro.
Stato dell'ordine	Fornisce statistiche sui casi in base allo stato dell'ordine.
Grafico	Mostra informazioni grafiche sul lavoro per periodo.
Tipologia di dente	Fornisce statistiche sul numero di scansioni e ordini in base alle informazioni sul trattamento.


Medit Insights

Medit Insights è un servizio di reportistica che aiuta ad analizzare le statistiche di utilizzo.

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

• Medit Insights

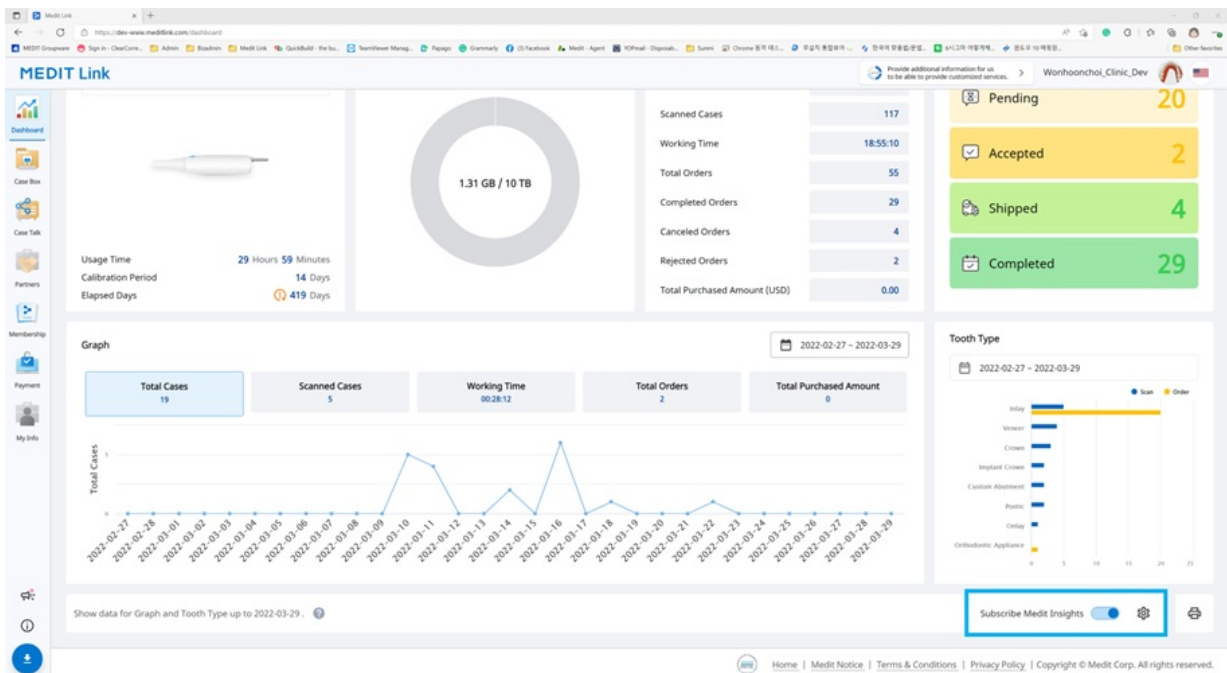

Iscrizione a Medit Insights

È possibile ricevere un'e-mail di rapporto il secondo giorno di ogni mese. Non è richiesta alcuna ulteriore procedura di registrazione. È sufficiente abilitare l'opzione "Iscriviti a Medit Insights".

Se non si utilizza l'indirizzo e-mail usato per l'account Medit Link, è possibile impostare un altro indirizzo e-mail per ricevere Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Il secondo giorno di ogni mese, l'utente riceverà un'e-mail con le statistiche come mostrato di seguito.

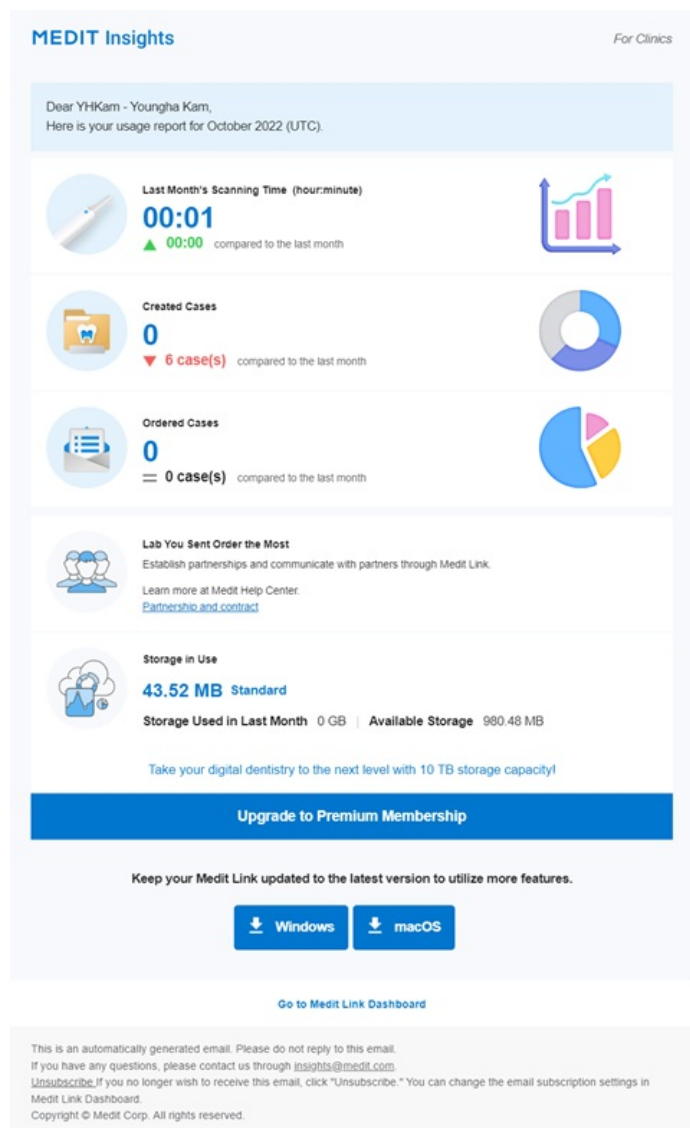


Banner	Medit fornisce suggerimenti e informazioni utili qui. * Se non si desidera visualizzare il banner, deselezionare la casella di controllo Accordo di marketing e promozione ne Le mie informazioni > Il mio account.
Informazioni statistiche	Vengono mostrate informazioni statistiche come il tempo di scansione, i casi creati, il laboratorio a cui sono stati commissionati più ordini, ecc.
Scarica Medit Link	Questo pulsante fornisce il link per scaricare Medit Link.
Dashboard	Tutte le informazioni statistiche si basano sulle informazioni della Dashboard. Maggiori dettagli sono disponibili in Dashboard.

Annulare l'iscrizione a Medit Insights

Disabilitare l'opzione "Iscriviti a Medit Insights" nella Dashboard o cliccare su "Annulla iscrizione" nell'e-mail ricevuta.

Case Box/Work Box


Case Box (Clinica) o Work Box (Laboratorio) mostrano tutti i casi creati dall'utente sull'applicazione Medit Link. È possibile visualizzare i file tramite browser web senza installare un programma separato.

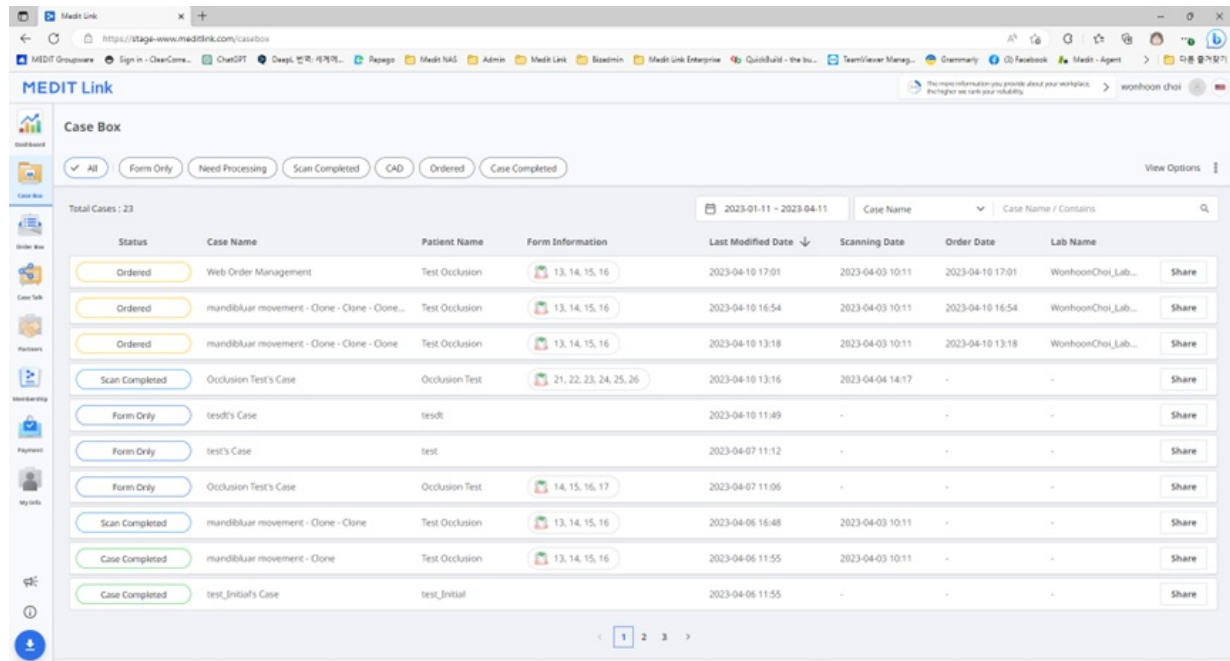

Filtraggio dei casi

Filtro per stato

È possibile filtrare i casi in base al loro stato.

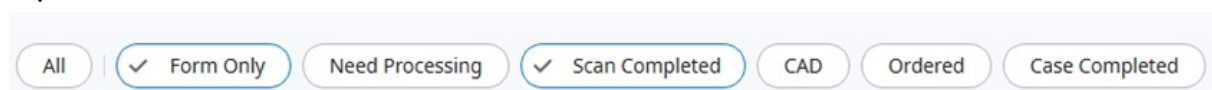

- L'utente può cliccare sullo stato che desidera visualizzare. Il browser mostrerà soltanto i casi con lo stato scelto.
- L'utente può selezionare più stati contemporaneamente.

In base al tipo di account, viene fornita la seguente tipologia di stato:

Case Box (Clinica)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Laboratorio)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done


Filtro per durata

È possibile filtrare e visualizzare i casi la cui ultima modifica è stata apportata entro il periodo stabilito.

1. Cliccare sul filtro durata.



2. Selezionare l'intervallo.

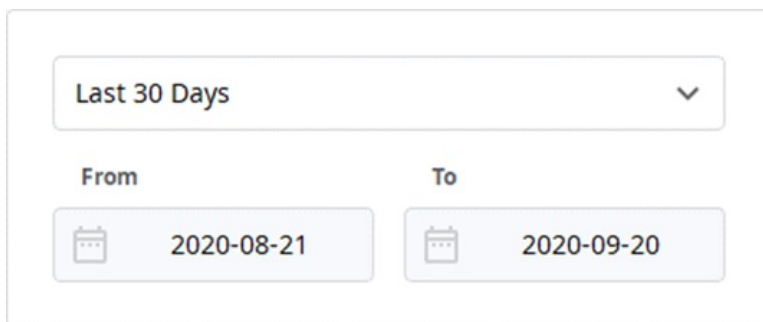


- Tutto: mostra tutti i casi.
- Intervallo personalizzato: consente di specificare le date di inizio e fine per visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro quell'intervallo di tempo.
- Oggi: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata il giorno corrente.
- Ieri: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata il giorno prima.
- Ultimi 7 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata negli ultimi 7 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 30 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata durante gli ultimi 30 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 90 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è stata apportata durante gli ultimi 90 giorni, escluso il giorno corrente.
- Questo mese: mostra i casi del mese corrente.
- Mese precedente: mostra i casi del mese precedente.

L'elenco dei casi verrà aggiornato in tempo reale con i casi creati o modificati l'ultima volta entro la durata selezionata.

Filtro per ricerca


È possibile sfruttare le funzionalità di ricerca per cercare le informazioni desiderate in modo semplice e veloce.

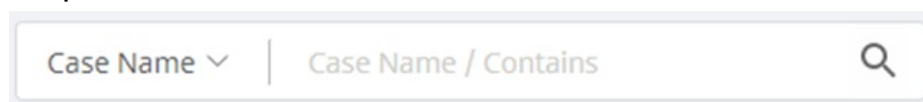

Opzioni di ricerca in base all'account clinica/laboratorio:

Case Box (Clinica)	Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Nome del laboratorio
Work Box (Laboratorio)	Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, ID dell'ordine

Dettagli del caso

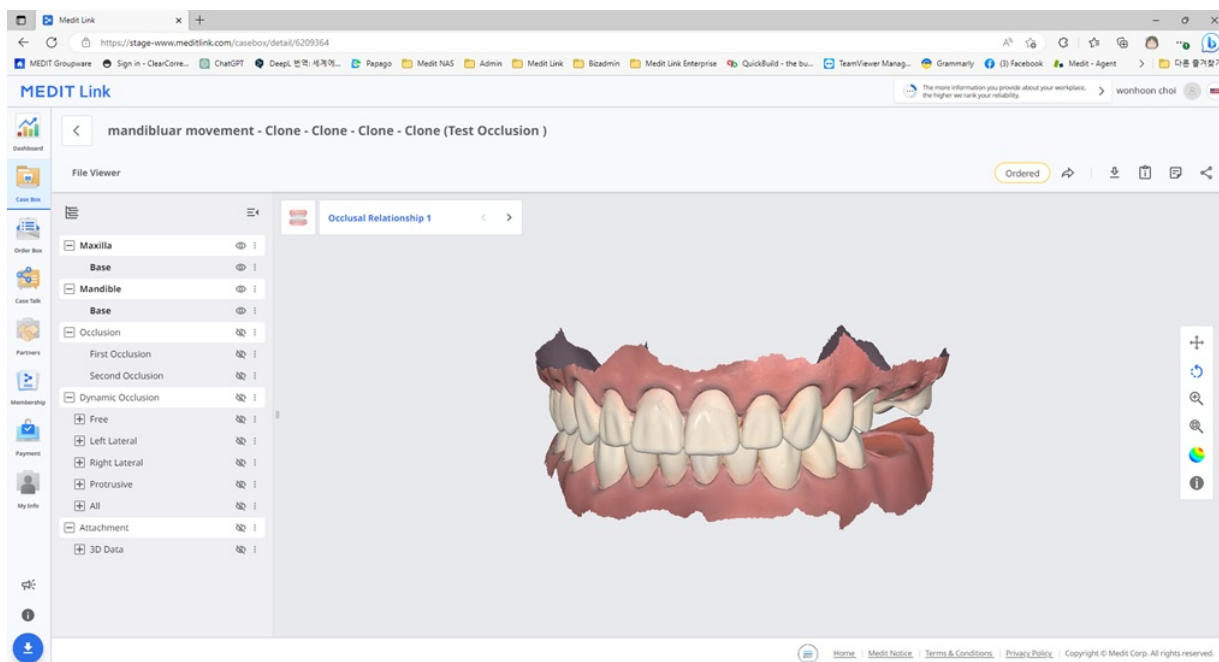

In Case Box/Work Box sono disponibili i seguenti strumenti di gestione dei casi.

	Stato del caso	Mostra lo stato del caso.
	Vai ai dettagli	Fornisce una scorciatoia per lo stesso caso in un'altra box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Download	Consente di scaricare i file presenti nel caso sul PC locale.
	Informazioni sul caso	Consente di rivedere i dettagli del caso e salvarli come PDF o stamparli.
	Promemoria & Tag	Consente di aggiungere un promemoria o dei tag quando si registra o si ordina un caso. Utilizzare queste funzioni per comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva o supplementare sul caso ai collaboratori.
	Condividi	Crea un link per la condivisione. Gli utenti in possesso del link condiviso possono accedere ai dati 3D in un browser come Chrome, Firefox o Safari senza dover installare programmi aggiuntivi. È possibile condividere il link liberamente con chiunque o solo con persone specifiche. È possibile impostare un codice PIN o una data di scadenza del link per proteggere le informazioni riservate.

Order Box/In Box

Order Box (Clinica) o In Box (Laboratorio) mostrano i casi ordinati sull'applicazione Medit Link.

Dettagli ordine

Dashboard

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

test (test)

Order

File Viewer

Order ID

5995726

Patient Name

test

Scanning Date

2023-04-05

Requested Delivery Date

PM 12:00

Memo

Tags

Partner Name

WonhoonChoi_Lab_Stage

Order Date

2023-03-28 AM 08:34

Expected Delivery Date

2023-04-05

PM 12:00

Cancel

Pending

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
14	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
15	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
16	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
23	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
24	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
25	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
26	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
27	Inlay	-	Multi-Layered Zl...	None	0.00
28	Onlay	-	Glass Ceramic	A3.5	0.00
Total					USD 0.00

1	Mostra il nome del caso e il nome del paziente.
2	Fornisce funzioni per la gestione degli ordini (accettazione/cancellazione; consegna/ricezione).
3	Mostra le schede disponibili: Ordine, Visualizzatore file
4	Mostra le funzioni per la gestione di casi e file: stato del caso, comandi rapidi per informazioni dettagliate, informazioni sul caso, promemoria & tag, ecc.
5	Mostra informazioni dettagliate relative all'ordine, come il numero dell'ordine, il nome del paziente, il nome del collaboratore, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna e promemoria & tag.
6	Mostra informazioni sul prodotto ordinato e sullo stato della consegna.


Schede in Order Box/In Box

Ordine	Visualizzatore file
Consente di visualizzare informazioni dettagliate relative all'ordine, come l'ID dell'ordine, il nome del paziente, il nome dell'account, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna, promemoria e tag.	Consente di visualizzare i file generati dalle operazioni di scansione/CAD. Il visualizzatore file mostra e gestisce i modelli 3D acquisiti o allegati e le immagini 2D.

Case Talk

I casi creati in Medit Link possono essere condivisi con persone specifiche stabilite dall'utente, chiunque abbia il link condiviso o iscritti di Medit Link.

L'utente può visualizzare un elenco di tutti i casi condivisi tramite "Case Talk" in Medit Link App e Medit Link Web.

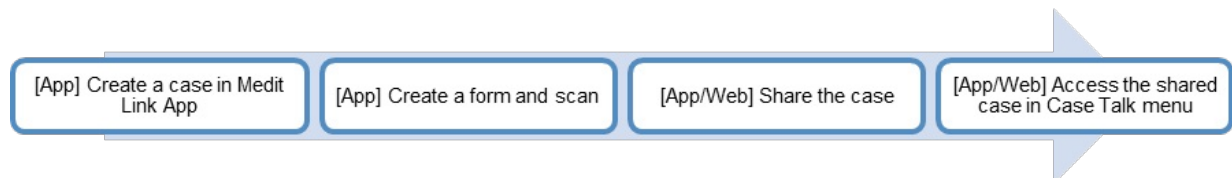


I casi condivisi possono essere visualizzati tramite browser web senza installare un programma a parte, consentendo una comunicazione semplice sui dati 3D su vari dispositivi.

Creazione di un Case Talk

È possibile creare un link condiviso a un caso creato in Case Box/Work Box.

1. Cercare un caso che si desidera condividere e cliccare sul pulsante "Condividi" a destra.

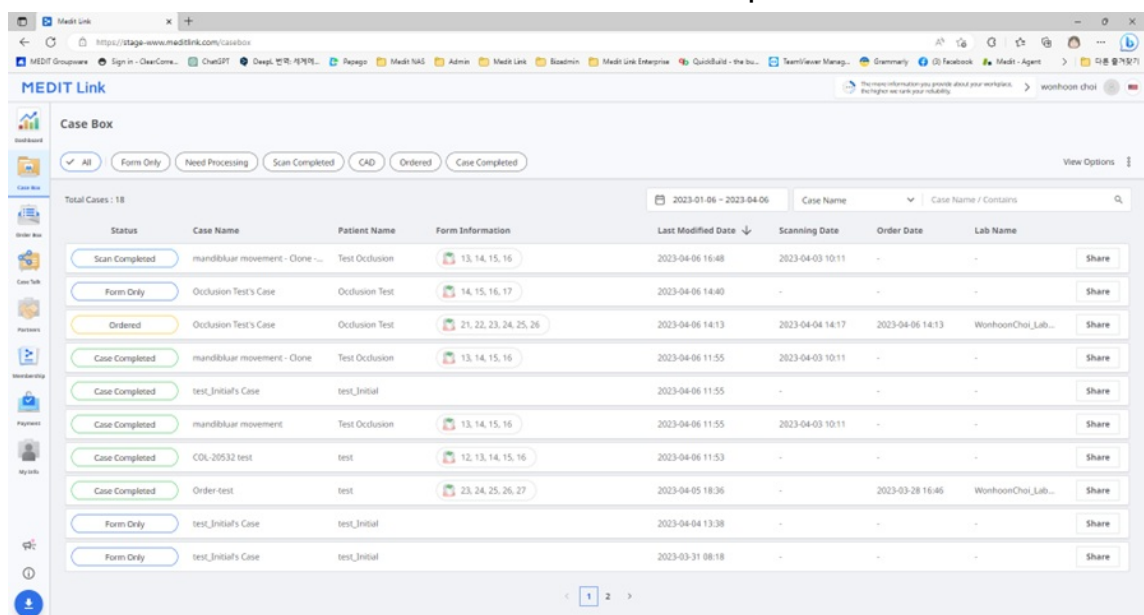

2. Selezionare i file che si desidera condividere.

Share through Case Talk?

File List

✓

▼

Maxilla

✓

Base

meditMesh

3,449KB

✓

▼

Mandible

✓

Base

meditMesh

2,926KB

✓

▼

Occlusion

✓

First Occlusion

meditMesh

662KB

✓

Second Occlusion

meditMesh

611KB

✓

▼

Face Scan Data

6 items selected.

15.23MB/200 MB i

Share With

Share with Anyone

▼

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

3. Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione.
4. Cliccare su "Ottieni il link" per creare un link condiviso.

Impostare la tipologia di autorizzazione alla condivisione e le opzioni di condivisione

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close
Get Link

Condividi con	- Condividi con chiunque Crea un link condiviso. È possibile condividere i file con chiunque. - Condividi con persone specifiche Crea e invia un link condiviso a persone specifiche.
Condividi tramite	Selezionando "Condividi con persone specifiche", è possibile condividere il link con persone specifiche in vari modi. - Indirizzo e-mail - SMS - Collaboratori
Data di scadenza	Consente di impostare la data di scadenza del link. Una volta scaduto il link, le persone con cui è stato condiviso non potranno più accedere ai file. È possibile prolungare il periodo di scadenza fino a 90 giorni dalla data corrente.
Codice PIN	Consente di impostare un codice d'accesso a 6 cifre per garantire la sicurezza dei dati.
Condividi il nome del paziente	Selezionando questa opzione, tutte le persone in possesso del link vedranno il nome del paziente.
Concedi autorizzazione al download	Selezionando questa opzione, tutti gli utenti in possesso del link potranno scaricare i file.

Autorizza i commenti	• Selezionando questa opzione, sarà possibile comunicare attraverso il link condiviso. • Deselezionando l'opzione, il destinatario potrà solo visualizzare i commenti ma non potrà aggiungerne.
Commento	È possibile lasciare un messaggio nella sezione commenti.

Dettagli Case Talk

È possibile visualizzare i file nel caso condiviso. Nella pagina dei dettagli Case Talk sono disponibili le seguenti funzioni.

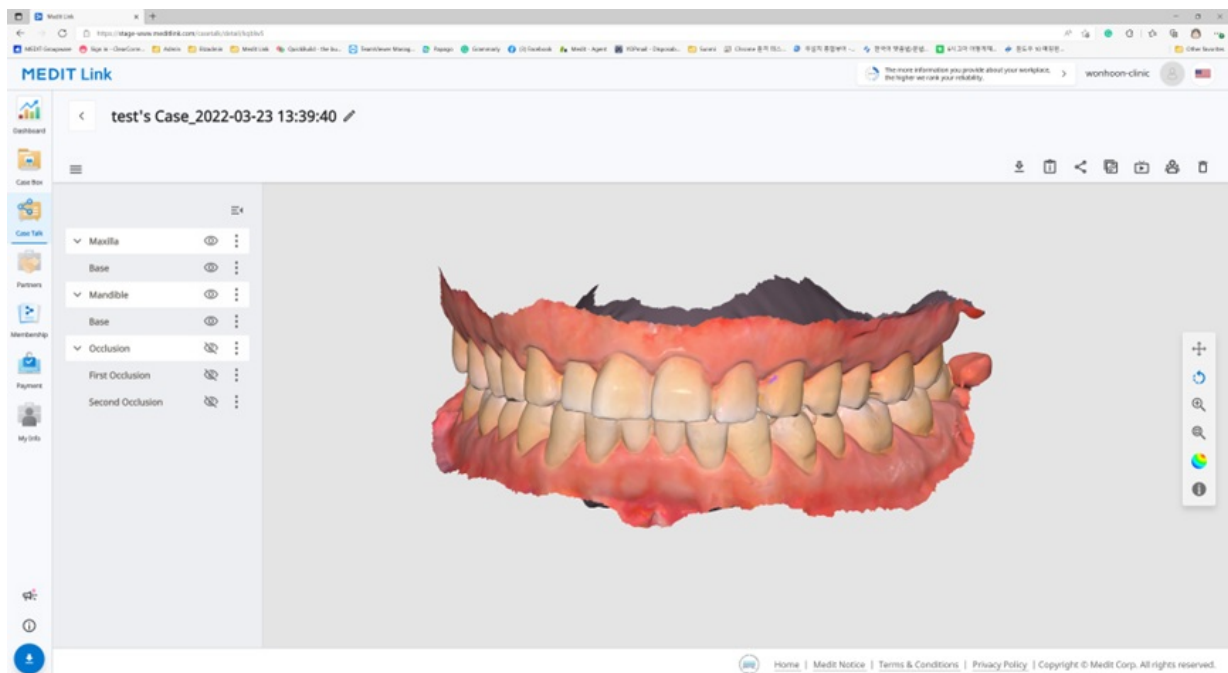

	Download	Consente di scaricare tutti i file presenti in questo caso sul PC locale.
	Informazioni sul caso	Mostra le informazioni dettagliate relative al caso.
	Condividi	Consente di modificare le impostazioni di condivisione.
	Copia link	Consente di copiare il link condiviso negli appunti. Il link copiato mostra i file condivisi sul browser web dell'utente.
	Live	Consente di condividere la propria schermata con gli utenti connessi. La condivisione della schermata è sincronizzata con gli utenti connessi.
	Partecipanti	Mostra tutti gli utenti che accedono al link condiviso.
	Elimina	Elimina il link condiviso. Il link condiviso eliminato non è più accessibile.

ⓘNota


I seguenti servizi non sono disponibili per Medit Link China.

- Live
- Partecipanti

Web Viewer

È possibile visualizzare i dati condivisi tramite Case Talk in un browser web.

È inoltre possibile comunicare con le persone che hanno accesso al link utilizzando le note e i commenti.

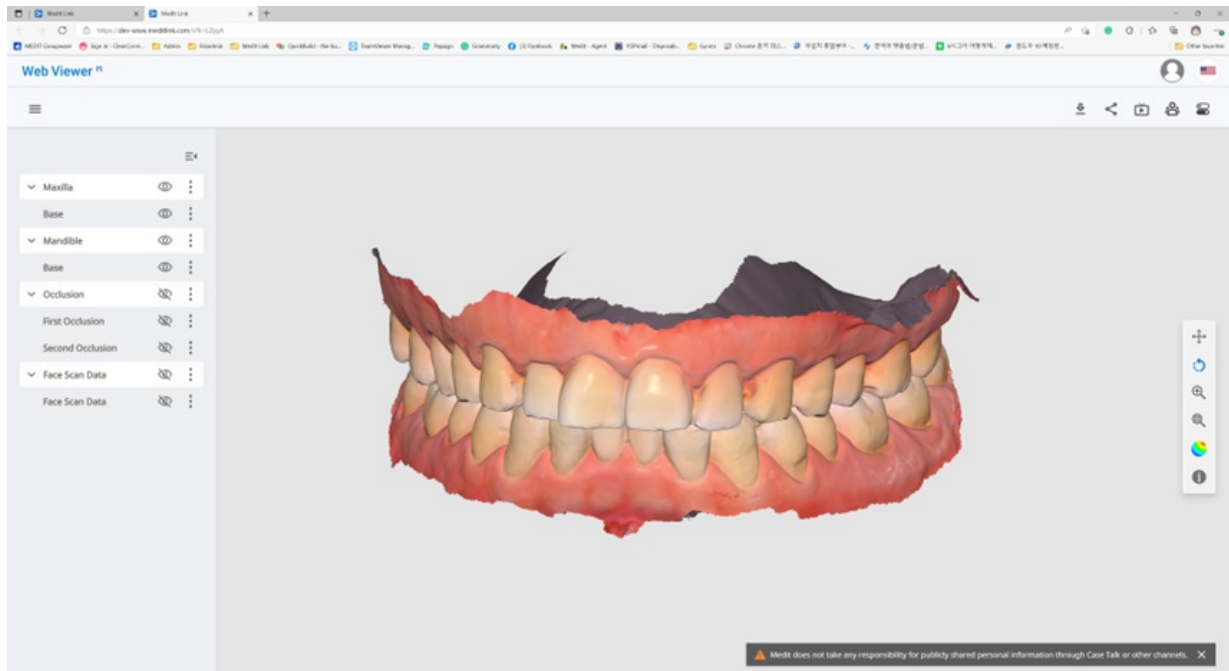

	Download	Consente di scaricare tutti i file presenti in questo caso sul PC.
	Informazioni sul caso	Mostra le informazioni dettagliate relative al caso.
	Condividi	Consente di modificare le impostazioni di condivisione.
	Live	Consente di condividere la propria schermata con gli utenti connessi. La condivisione della schermata è sincronizzata con gli utenti connessi.
	Partecipanti	Mostra tutti gli utenti connessi al link condiviso.
	Etichettatura del dente	Consente di cambiare il sistema di etichettatura dei denti.


ⓘNota

I seguenti servizi non sono disponibili per Medit Link China.

- Live
- Partecipanti

Note

È possibile aggiungere note in una posizione specifica sul modello 3D. Chiunque abbia il link può visualizzare le note.

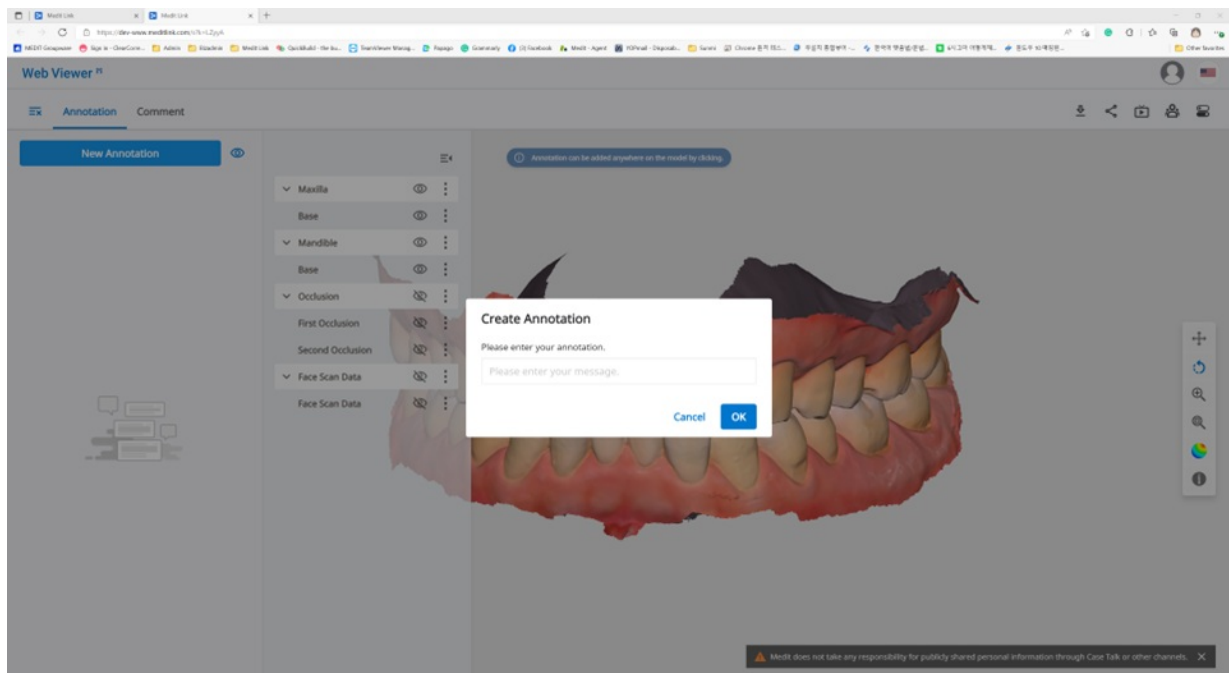

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Note

1. Cercare l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra e selezionare la scheda "Note". Utilizzare il pulsante "Nuova nota" per aggiungere una nota in qualsiasi punto dei dati con un clic.
2. Digitare il messaggio, quindi cliccare su "OK" per salvarlo.

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and two lines of instructional text: 'Please enter your annotation.' and 'Please enter your message.' Below the second line is a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. È possibile utilizzare le note come semplice canale di comunicazione. Cliccare sulla nota creata per inserire una risposta, quindi premere "Invia".

This image shows a single annotation entry in a list. The entry header includes the user name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and icons for deleting and closing the entry. Below this, it says 'Annotation 1' followed by a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Commenti

È possibile comunicare con gli utenti che hanno accesso al link tramite la scheda "Commento" nel menu del Web Viewer.

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- [Commento](#)

Condivisione della schermata in tempo reale


È possibile condividere la schermata in tempo reale.

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- [Live](#)

1. Cliccare su "Live" per condividere la schermata del Web Viewer con gli utenti connessi.

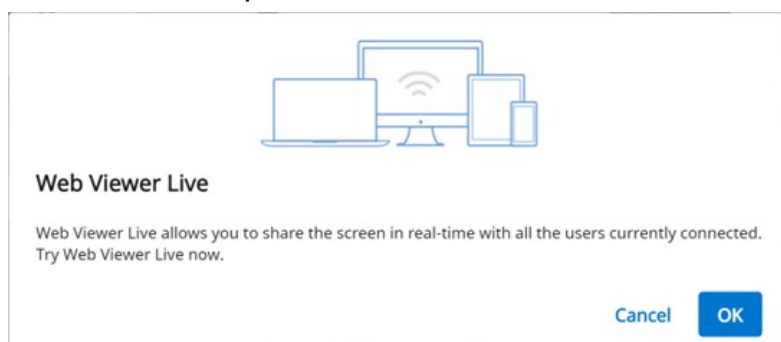


2. Cliccare su "OK" per avviare la condivisione della schermata.
3. È necessario che gli altri utenti che hanno effettuato l'accesso al link accettino la condivisione della schermata.
4. La schermata dell'utente che ha avviato la condivisione viene mostrata in sincronia con quella della persona che ha ricevuto la richiesta.

Albero dei dati





Tutti i dati sono raggruppati e visualizzati in base agli attributi nell'albero dei dati. È possibile mostrare o nascondere i dati, regolare l'opacità, ecc.

Controlli dell'albero dei dati

Mostra/Nascondi	Fare clic sull'icona a forma di "occhio" per scegliere se mostrare o nascondere i dati. È possibile controllare la visibilità dei dati come gruppo o singolo file.
Opacità	Passare il mouse su un elemento visibile per visualizzare la barra di scorrimento dell'opacità. Regolare il cursore per modificare la trasparenza dei dati. 

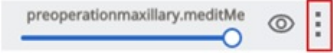Menu esteso	Il menu esteso si trova sul lato destro di ciascun elemento dell'albero dei dati. Include le seguenti opzioni:  • Mostra solo questo: nasconde tutti gli altri dati tranne quelli correnti. • Nascondi: nasconde i dati correnti. • Duplica: clona i dati all'interno del caso corrente. • Esporta: salva i dati su un PC locale. • Elimina: elimina i dati o il gruppo di dati correnti.
-------------	---

Controlli del modello 3D

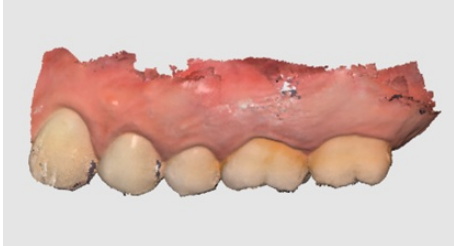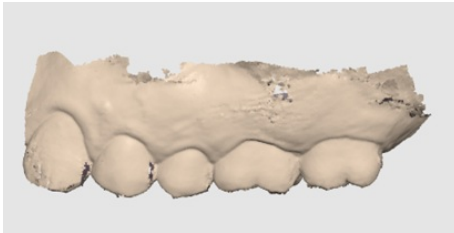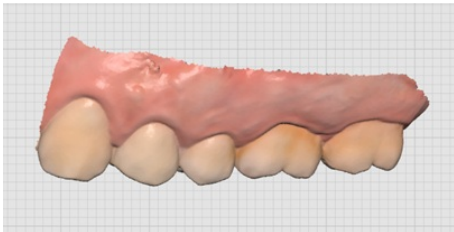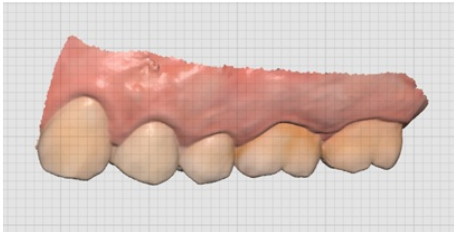	Panoramica	Sposta il modello.
	Ruota	Ruota il modello.
	Ingrandisci/riduci lo zoom	Ingrandisce o riduce lo zoom sul modello.
	Adatta lo zoom	Posiziona il modello al centro dello schermo.
	Modalità di visualizzazione del modello	Texture on 
		Texture off 
	Impostazioni griglia (mm)	Griglia On 
		Sovrapposizione On 



Griglia Off

Nasconde la griglia.

Collaboratori

È possibile cercare potenziali collaboratori per richiedere una collaborazione e visualizzare l'elenco dei collaboratori attuali e di quelli con contratti.


iNota

I servizi che utilizzano Google Maps non sono disponibili su Medit Link China.

Cerca collaboratori

È possibile cercare gli utenti di Medit Link in base al nome e/o indirizzo dell'attività.

Nei risultati di ricerca, è possibile inviare una richiesta di collaborazione a un'organizzazione con cui si desidera lavorare.

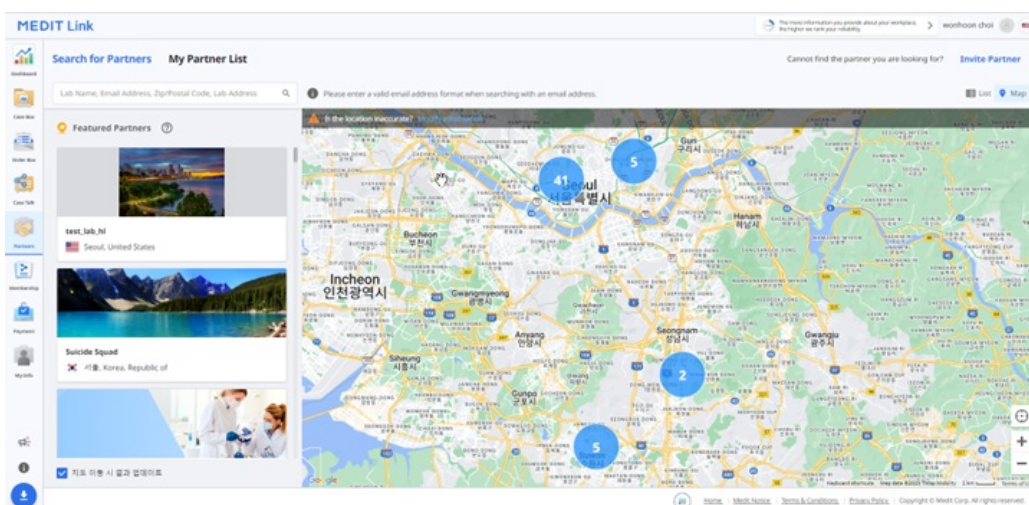


Elenco dei miei collaboratori

È possibile visualizzare le collaborazioni e i contratti attuali con tutte le attività dei collaboratori esistenti in Elenco dei miei collaboratori.

In che modo un contratto è diverso da una partnership?

Dopo aver collaborato con un'organizzazione, è possibile richiedere di stipulare un contratto con quell'organizzazione.

- Se il collaboratore accetta la richiesta di contratto, è possibile procedere con il pagamento degli ordini effettuati.

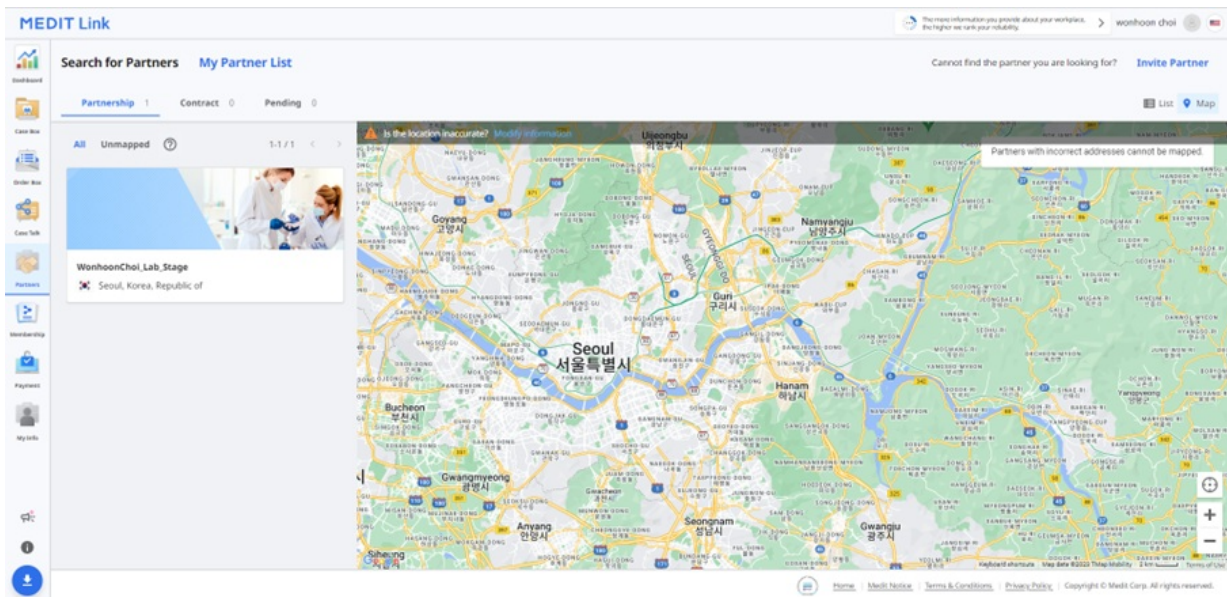

iNota

Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Contratto

Invita il collaboratore

Se c'è un'organizzazione con cui si desidera collaborare, è possibile invitarla a unirsi a Medit Link. La collaborazione verrà automaticamente creata una volta accettato l'invito.

1. Cliccare su "Invita il collaboratore" in alto a sinistra della schermata.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del fornitore con cui si desidera lavorare: riceverà un invito con una richiesta di collaborazione.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. La collaborazione verrà istituita automaticamente non appena l'organizzazione invitata accetta l'invito e si iscrive a Medit Link.

Abbonamento

La politica di abbonamento di Medit Link mira a stabilire un ambiente digitale più ampio, espandendosi gradualmente per fornire diversi servizi basati sulla piattaforma cloud.

Con la nostra nuova politica di abbonamento, puntiamo a offrire ai nostri clienti un'esperienza più coerente e personalizzata.

Sono disponibili due piani di abbonamento:

Standard

- Piano standard gratuito per tutti gli utenti che hanno effettuato l'accesso
- 1 GB di archiviazione cloud
- Rivolto ai nuovi utenti

Premium

- Piano a pagamento
- 10 TB di archiviazione cloud
- Rivolto a utenti con molti casi e vari dati
- Prova gratuita di un mese

	Standard	Premium
Archiviazione cloud	1 GB	10 TB
Tariffa mensile	Gratuito	0,99 dollari/mese
* Archiviazione cloud non prevede lo spazio occupato dai dati non elaborati.		

iNota

I piani di abbonamento saranno disponibili su Medit Link China. È possibile aderire gratuitamente al piano Premium fino al rilascio ufficiale della funzione.

Abbonamento

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

My Plan

Standard
Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Subscribe](#)

Cloud Storage

Set Period: 2018-01-01 ~ 2023-04-06

353.21 MB / 1 GB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)


☐ **Raw Data** 11.97 GB
Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 353.21 MB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

[Home](#) [Medit Notice](#) [Terms & Conditions](#) [Privacy Policy](#) Copyright © Medit Corp. All rights reserved.


Il mio piano

Nella sezione a sinistra, è possibile vedere il proprio piano di abbonamento attuale. Qui è anche possibile cambiare lo stato dell'abbonamento in qualsiasi momento.

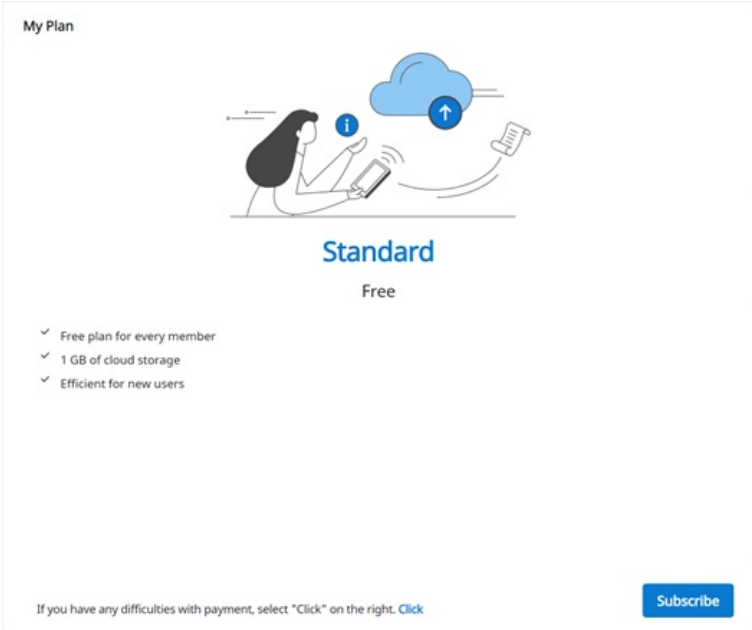

Archiviazione cloud

Nella sezione a destra, è possibile gestire l'archiviazione cloud.

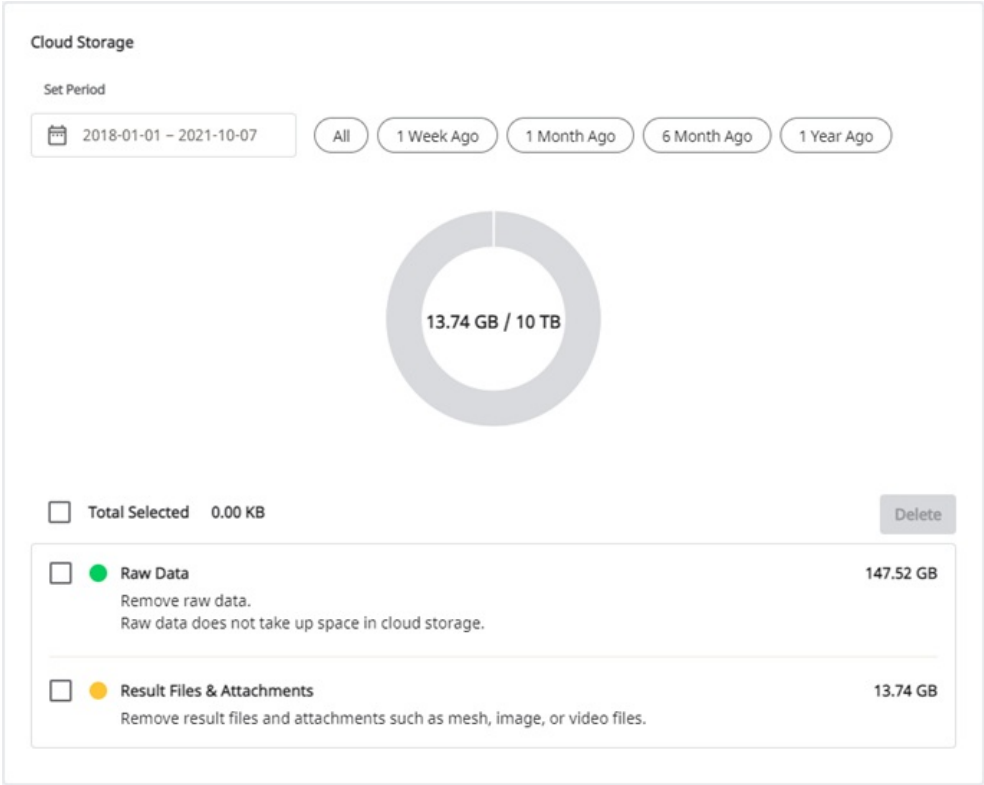

Imposta periodo	Consente di impostare il periodo specifico per eliminare i dati creati entro tale intervallo di tempo. • Tutto: mostra tutti i file. • 1 settimana fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorsa una settimana. • 1 mese fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un mese. • 6 mesi fa: mostra i file dalla cui creazione sono trascorsi sei mesi. • 1 anno fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un anno.
-----------------	--


Dati non elaborati	I dati non elaborati non occupano spazio di archiviazione cloud, quindi non saranno nel grafico pi. Tuttavia, se necessario è possibile gestire i dati non elaborati da qui (ad esempio, possono essere eliminati per proteggere le informazioni riservate del paziente, ecc.).
Risultati & allegati	I file dei risultati e gli allegati occupano spazio nel cloud. Se il cloud è pieno, è possibile ricavare più spazio di archiviazione rimuovendo i file superflui.
Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dal cloud per liberare spazio.

Sottoscrivere l'abbonamento


Se al momento si utilizza il piano Standard o il piano Premium con un codice di riscatto, è possibile sottoscrivere l'abbonamento Premium.

Il pagamento viene effettuato tramite il servizio Stripe (www.stripe.com).

1. Cliccare sul pulsante "Abbonati".

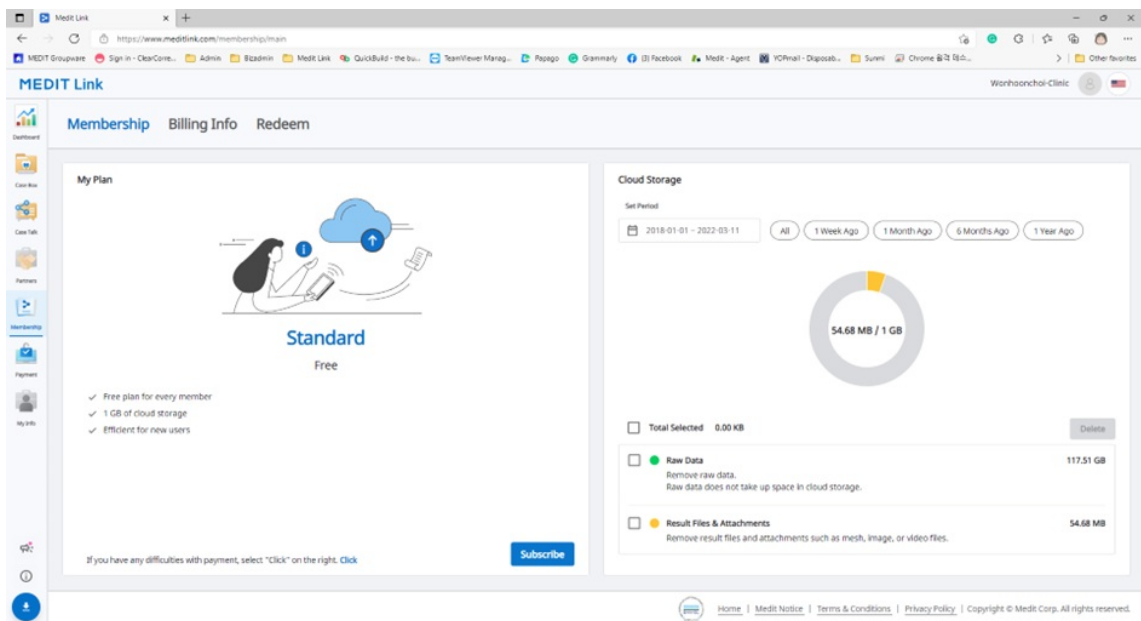

2. Leggere la descrizione del piano Premium e cliccare nuovamente su "Abbonati".

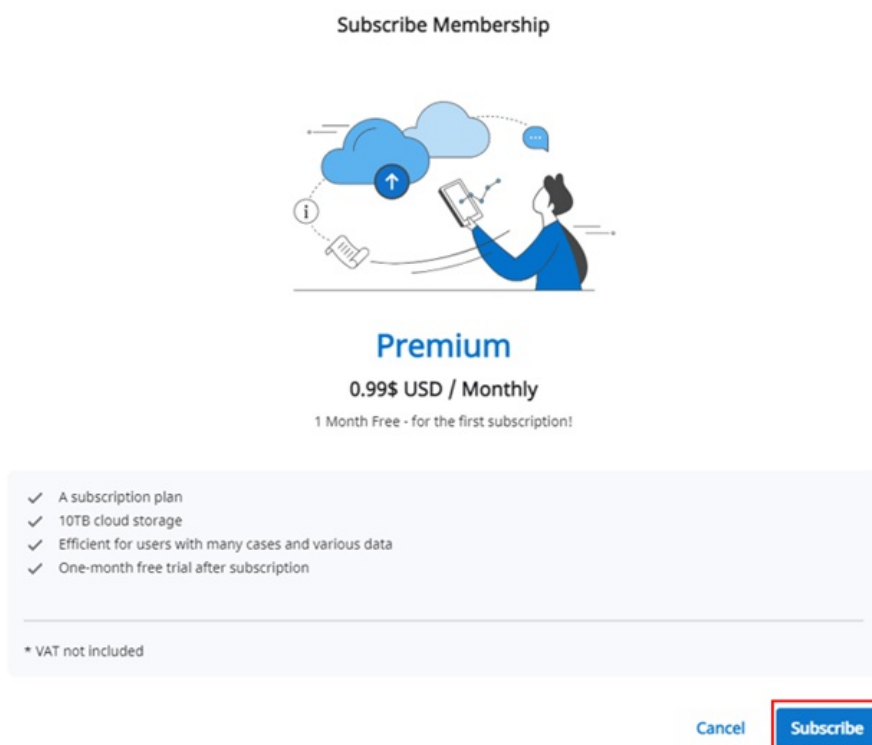

3. Controllare il prezzo e le condizioni e inserire le informazioni necessarie per il pagamento. Quindi, cliccare su "Abbonati".

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Name on card

Country or region


South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.


4. Il pagamento potrebbe richiedere alcuni secondi. Al termine, comparirà il messaggio di conferma.

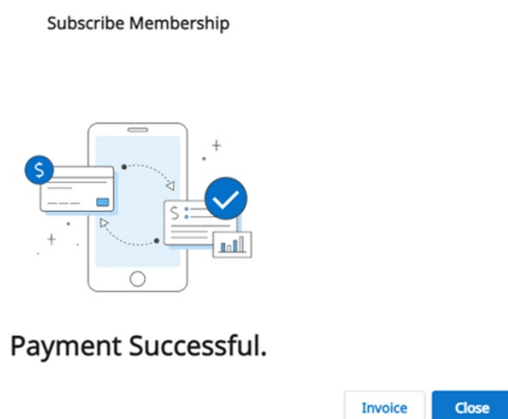


Annulare l'abbonamento

È possibile annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Una volta annullato, è comunque possibile utilizzare l'abbonamento Premium per i giorni rimanenti del mese pagato. Il piano passerà alla versione Standard dal giorno del pagamento successivo e lo spazio di archiviazione cloud verrà limitato a 1 GB. Se la capacità di archiviazione cloud viene superata, non verrà eseguito il backup dei file e le funzioni di ordinazione e condivisione non saranno disponibili.

1. Cliccare su "Annulla l'abbonamento".

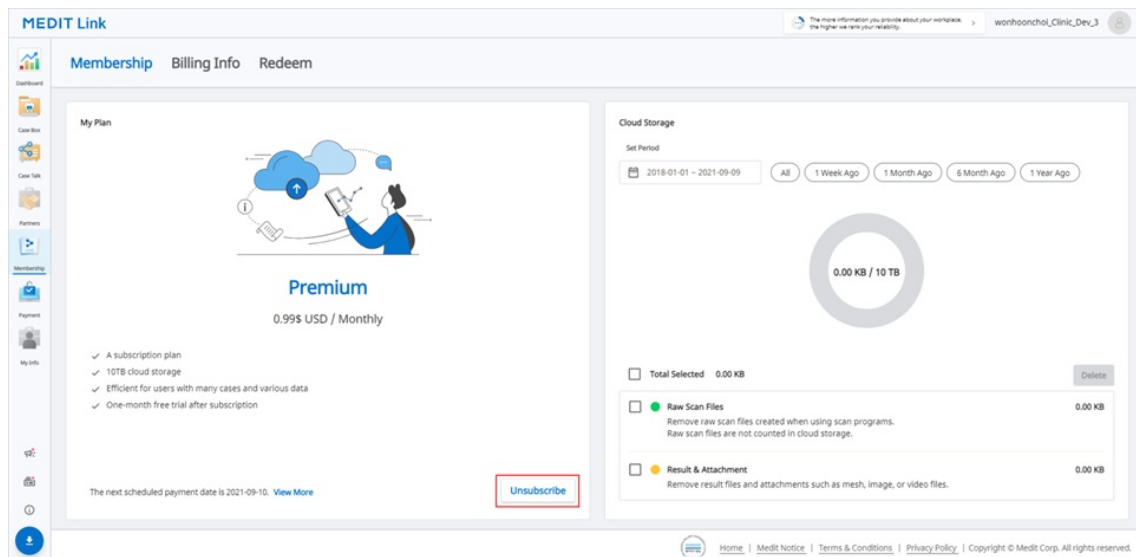

2. Cliccare su "Annulla la sottoscrizione".

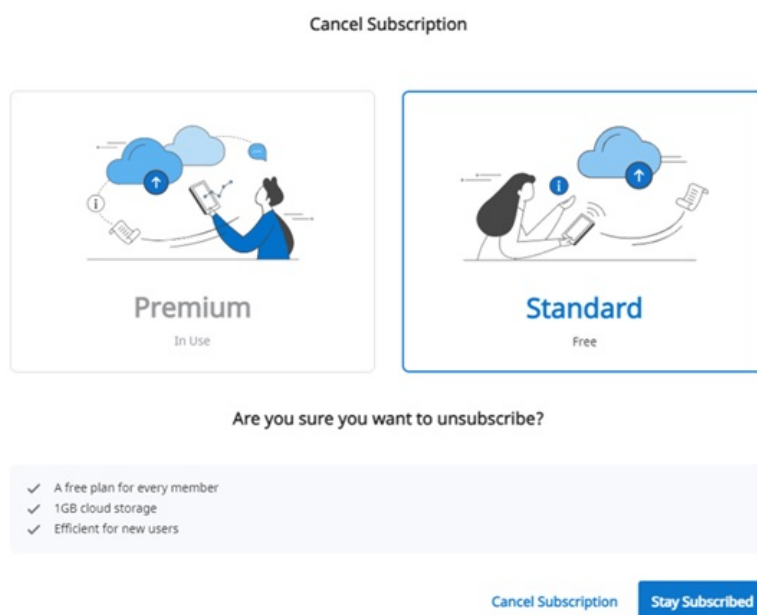

3. Per confermare la volontà di annullare la sottoscrizione, cliccare nuovamente su "Annulla la sottoscrizione" nella nuova finestra pop-up.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. L'abbonamento è stato annullato.
5. Il piano passerà alla versione Standard dal giorno del pagamento successivo e lo spazio di archiviazione cloud verrà limitato a 1 GB. Se la capacità di archiviazione cloud viene superata, non verrà eseguito il backup dei file e le funzioni di ordinazione e condivisione non saranno disponibili.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Informazioni di fatturazione

È possibile visualizzare la cronologia dei pagamenti per gli abbonamenti, inclusa una fattura per ogni pagamento. È inoltre possibile aggiungere o cambiare il metodo di pagamento, che verrà applicato a partire dal prossimo pagamento programmato.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

The footer includes links for Home, Medit Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Come aggiungere un metodo di pagamento

1. Cliccare su "Modifica il metodo di pagamento".

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangular box.

2. Cliccare su "Aggiungi metodo di pagamento".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Inserire le informazioni richieste e cliccare su "Aggiungi".

Add payment method

Card information

Card number	MM / YY
--	--------------------------------------

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. Il metodo di pagamento appena aggiunto verrà impostato come predefinito e utilizzato per il pagamento successivo.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Come cambiare un metodo di pagamento

1. Cliccare sull'icona del menu espanso accanto al metodo di pagamento che si desidera cambiare nella finestra di dialogo relativa alla fatturazione.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Cliccare su "Rendi predefinito" per impostare la carta selezionata come metodo di pagamento predefinito.

The screenshot shows a 'Billing' page with three main sections: 'CURRENT PLANS', 'PAYMENT METHODS', and 'BILLING INFORMATION'. Under 'CURRENT PLANS', there are two identical entries for 'Premium membership for Clinic' at '\$0.99 per day', both renewing on September 10, 2021. Under 'PAYMENT METHODS', there are two Visa cards. The first card, ending in 5556, is marked as 'Default' and expires 11/2021. The second card, ending in 4242, also expires 11/2021. Below the cards is a '+ Add payment method' link. A red box highlights a menu for the second card with options 'Make default' and 'Delete'. The 'BILLING INFORMATION' section is at the bottom but is empty.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021

VISA **** 4242 Expires 11/2021

+ Add payment method

Make default
Delete


BILLING INFORMATION

Riscatta


È possibile registrare il codice di riscatto fornito come parte della promozione. È inoltre possibile utilizzare l'abbonamento Premium insieme al codice di riscatto.

Registrare il codice di riscatto

1. Inserire il codice di riscatto e cliccare su "Registra".

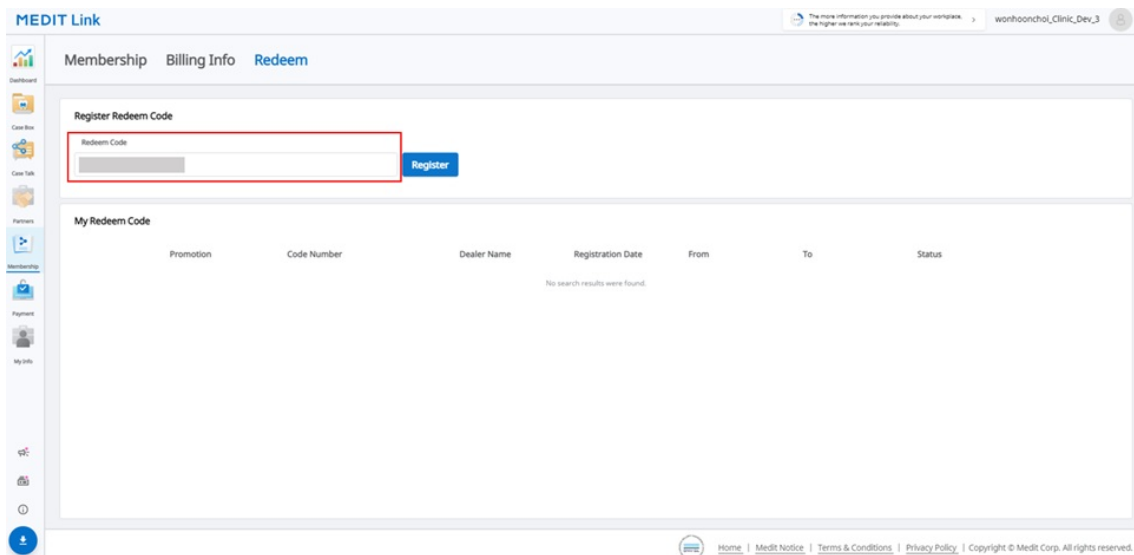

2. Leggere l'avviso e scegliere la voce "Registra" o "Applica" nella finestra di dialogo pop-up.
 - **Registra:** consente di registrare il codice di riscatto. È possibile attivare e utilizzare il codice di riscatto in un secondo momento dopo la registrazione.
 - **Applica:** consente di registrare e attivare il codice di riscatto. Lo sconto promozionale si applica immediatamente.

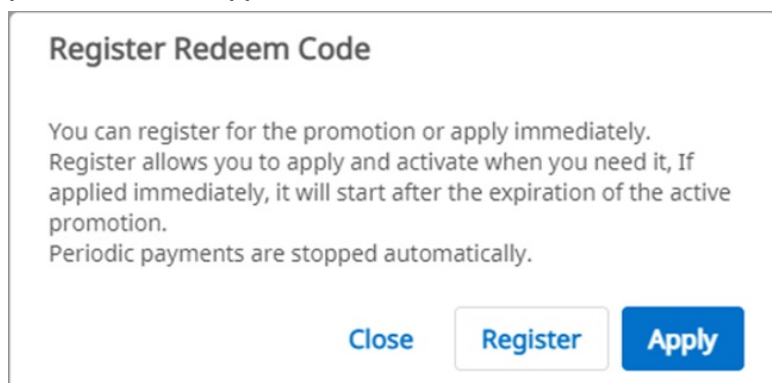

Attivare il codice di riscatto

È possibile registrare più codici di riscatto, ma è necessario attivare quello che si desidera utilizzare.

1. Cliccare sul pulsante "Attiva" accanto al codice che si desidera utilizzare.
Se non è presente alcun codice con lo stato "Attivo", quello scelto verrà applicato immediatamente. Se un codice è già attivato, il suo stato cambierà in "Waiting" e verrà utilizzato quello scelto. Alla scadenza del codice di riscatto corrente, quello in attesa verrà riattivato automaticamente.

2. **iNota**
Solo un codice può trovarsi nello stato "Waiting".

Medit Link

[Sign in - ClearCor...](#)
[Admin](#)
[Bizadmin](#)
[Medit Link](#)
[QuickBuild - the bu...](#)
[TeamViewer Manag...](#)
[Papago](#)
[Grammarly](#)
[Facebook](#)
[Medit - Agent](#)
[Sunmi](#)
[Chrome 음악 디스...](#)
[루돌지 통장관리...](#)

[The more information you provide about your workplace, the higher we rate your reliability.](#)

wonhoonchol_Clinic_Dev_3

MEDIT Link

[Membership](#)
[Billing Info](#)
[Redeem](#)

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

49

Pagamento

Nota


Il seguente servizio non è disponibile per Medit Link China.

- Pagamento

Dettagli pagamento (account Clinica & Laboratorio)

È possibile consultare la cronologia dei pagamenti e delle transazioni con i propri collaboratori tramite la pagina Dettagli pagamento.

Informazioni sul conto di pagamento (solo account Laboratorio)

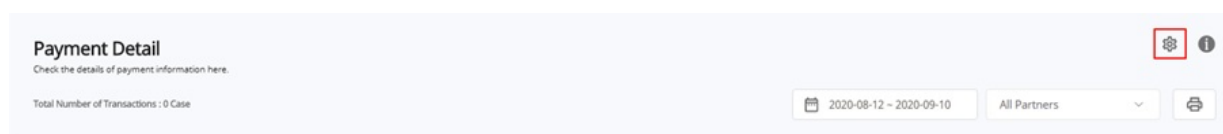

Questa funzione è disponibile solo per l'account amministratore del laboratorio. Consente di inserire le informazioni per ricevere i pagamenti dai collaboratori dell'utente.

- È necessario inserire le informazioni relative al proprio conto di pagamento affinché i collaboratori possano effettuare ordini tramite il sistema di pagamento online.

Nota

Selezionando un paese in cui è supportato Stripe, si verrà indirizzati a Stripe cliccando su un pulsante per iscriversi alla piattaforma.

È possibile selezionare la Corea del Sud, dopodiché si può inserire un numero di conto bancario locale per ricevere il pagamento. KCP si occuperà di elaborare il pagamento.

Le mie informazioni

Il mio account

In questa sezione, è possibile rivedere e modificare le informazioni fornite in fase di registrazione e controllare lo stato dell'abbonamento.

The screenshot shows the 'My Account' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. The main content area is divided into three sections: 'Account Information', 'Subscription Information', and 'Organization Information'. In the 'Account Information' section, there is a profile picture placeholder, an email address field with 'coldgreentea@naver.com' and a 'Change Email Address' button, a password field with a 'Change Password' button, a name field with 'wonhoonchoi_Lab3', and language/country dropdowns set to '한국어 (대한민국)' and 'Korea, Republic of'. A note states: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.' The 'Subscription Information' section shows 'Standard' as the current plan and a 'Subscribe' button. The 'Organization Information' section shows the organization name 'wonhoonchoi_Lab3' and an 'Edit Information' button.

La mia organizzazione (solo account Amministratore)

In questa sezione, è possibile rivedere e modificare le informazioni sulla propria organizzazione. La sezione è disponibile solo per gli account di tipo amministratore.

The screenshot shows the 'My Organization' page with a navigation bar at the top containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Address Information' (active), 'Organization Information', and 'Additional Information'. The 'Address Information' section is titled '(Mandatory) *' and contains several fields: 'Address 1 *' with '23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea' and a 'View Location on Map' button; 'Address 2' with 'Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.'; 'Zip/Postal Code *' with '02835'; 'City *' with 'Seoul'; 'Country *' with 'Korea, Republic of'; 'State/Province *' with 'Seoul'; 'Office Phone *' with '+ 82' and '01026088546'; and 'Mobile Phone (Optional)' with '+ 82' and '01026088546'. A note at the bottom states: 'If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.'

Il mio scanner

In questa sezione, è possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo connesso per l'account.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Il mio tariffario (solo account Amministratore laboratorio)

In questa sezione, è possibile inserire i prodotti offerti dal laboratorio e le informazioni sul prezzo per ciascun prodotto.

My Account My Organization **My Scanner** **My Price List**

Teeth Arch

AED (.)

✓ All (9/557)

Inlay (8/12)

Onlay (8/12)

Coping (10/17)

Denture Coping (5/5)

Crown (15/26)

Pontic (23/36)

Post & Core (3/4)

Veneer (8/11)

Implant Crown (12/53)

Custom Abutment (2/3)

Surgical Guide (1/1)

Offset Substructure (4/5)

Partial Denture (0/7)

Diagnostic Wax-Up (0/1)

Custom Abutment + Implant Crown (0/159)

Custom Abutment + Coping (0/45)

Post & Core + Crown (0/100)

Post & Core + Coping (0/50)

Name

Type

Method

Material

Price

인레이 지르코니아

Inlay

-

Zirconia

56.03

인레이 골드

Inlay

-

Gold

1.03

인레이 프레스 세라믹

Inlay

-

Press Ceramic

2.03

인레이 레진

Inlay

-

Resin

3.03

인레이 하이브리드 세라믹

Inlay

-

Hybrid Ceramic

4.03

인레이 글라스 세라믹

Inlay

-

Glass Ceramic

1.00

인레이 컴퍼지트 레진

Inlay

-

Composite Resin

1.00

인레이 e.max

Inlay

-

e.max

1.00

Save

Nota

- Una volta stipulato un contratto, il collaboratore potrà ordinare i prodotti in base a questo elenco di prodotti e al prezzo.
- Se con il collaboratore si ha solo una collaborazione, Medit Link non supporta gli ordini che richiedono informazioni sui prezzi.

52

Altro menu

Avvisi & aggiornamenti

È possibile controllare gli avvisi importanti di Medit e gli aggiornamenti di programma del software Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Informazioni Medit

È possibile ricevere informazioni sull'utilizzo di Medit Link. Accedere alle risorse educative e informative di Medit, come Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro assistenza Medit.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Scarica Medit Link App

È possibile scaricare l'ultima versione del file di installazione del programma dal web. Questo menu è utile quando si perde programma di installazione fornito nel pacchetto del prodotto o si dispone di un programma di installazione obsoleto.


53

iNota

Medit Link si aggiorna automaticamente quando si dispone di una connessione Internet.

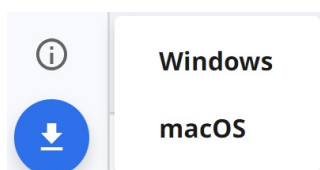

Panoramica

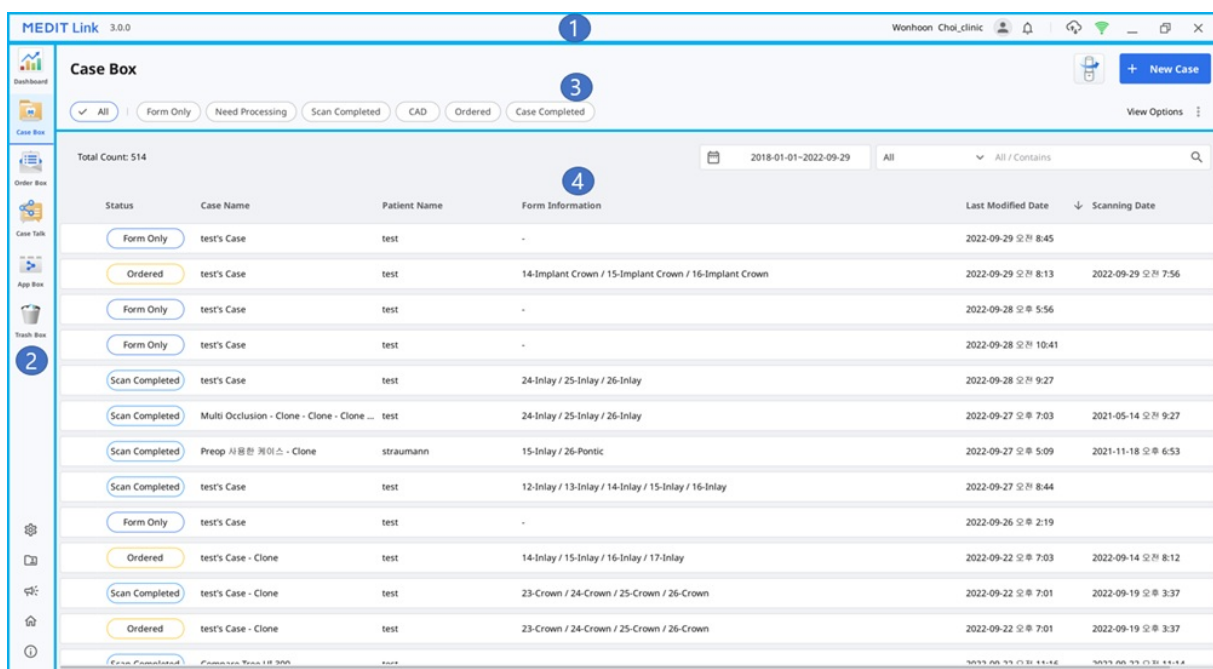

1	Barra del titolo	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Barra del titolo .
2	Menu	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Menu .
3	Strumenti e funzioni	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Visualizzatore file e Medit Link App > Opzioni di visualizzazione .
4	Elenco dei casi	Per maggiori informazioni, fare riferimento a Medit Link App > Filtraggio e ricerca .

Panoramica box

Flusso di lavoro		Account Clinica	Account Laboratorio
Passaggio 1	Creare i casi	Case Box: consente di creare i casi e di cercarli e visualizzarli facilmente tramite varie opzioni di filtraggio e ricerca. Con il caso creato, è possibile collegarsi direttamente con programmi di scansione e programmi CAD per lavorare su di essi.	
Passaggio 2	Ordinare/gestire i casi	Order Box: consente di gestire i casi ordinati. Sono previste funzioni per la gestione del processo, dall'ordine al completamento dei casi.	In Box: consente di gestire i casi di ordini ricevuti. Sono previste funzioni per la gestione del processo di accettazione, rifiuto, spedizione e completamento dei casi.


Passaggio 3	Lavorare su scansione/CAD		Work Box: consente di gestire i casi inoltrati da In Box o creati dall'utente. È possibile collegarsi direttamente con programmi di scansione e programmi CAD per lavorare su di essi.
Passaggio 4	Condividere i casi	Case Talk: consente di condividere i casi creati con restrizioni, senza restrizioni, con persone specifiche o altri iscritti di Medit Link.	
Passaggio 5	Lavoro supplementare o aggiuntivo	App Box: consente di utilizzare una varietà di app che integrano il flusso di lavoro dell'odontoiatria digitale. È possibile scaricare e installare app Medit o di terze parti.	
Passaggio 6	Eliminare/ripristinare i casi	Trash Box: consente di visualizzare, ripristinare o eliminare definitivamente i casi dal Trash Box.	

La seguente tabella riassume i Box disponibili in ciascuna tipologia di account (clinica o laboratorio).

Tipologia di account		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Account Clinica	Amministratore	O	O	X	X	O	O	O
	Membro	O	X	X	X	O	O * Solo funzione di ripristino	O
Account Laboratorio	Amministratore	X	X	O	O	O	O	O
	Membro	X	X	X	O	O	O * Solo funzione di ripristino	O

Barra del titolo

La barra del titolo fornisce un rapido accesso a funzionalità come stato della rete, sincronizzazione cloud e notifiche.

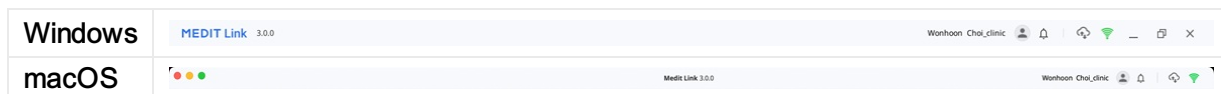

Le mie informazioni

Le mie informazioni contiene informazioni di base come l'immagine del profilo, il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e-mail e il nome utente.

Inoltre, fornisce un'opzione di logout e un collegamento alla pagina Il mio account in Medit Link Web.

The image shows a 'My Information' profile page. It features a profile picture placeholder (1) and a form with fields for 'Organization Name' (2) containing 'Wonhoonchoi_Clinic_Dev', 'Email Address' containing 'wonhoon.choi@medit.com', and 'Name' containing 'Wonhoonchoi_Clinic'. At the bottom, there are three buttons: 'Close', 'Log Out' (3), and 'Edit >' (4).

1	Mostra l'immagine del profilo.
2	Mostra il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e-mail e il nome utente.
3	Consente di uscire dall'account corrente.
4	Andare su Medit Link Web dopo aver effettuato l'accesso con l'account corrente. È possibile visualizzare, modificare e gestire le informazioni sull'account inserite in fase di registrazione.

Notifiche

È possibile visualizzare le notifiche relative a contratti, ordini e processi di lavoro.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | Spuntare la casella per visualizzare solo i messaggi non letti. |
| 2 | Cliccare su una notifica per passare immediatamente al caso o alla pagina web correlati. |

Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi

Strumento di gestione della sincronizzazione dei casi aiuta l'utente a caricare e scaricare i casi in Medit Link. È possibile caricare più casi sul cloud o scaricarli sul PC locale.

[illegible]

Upload

Casi totali/Casi selezionati	Consente di visualizzare il numero di tutti i casi o di quelli selezionati che devono essere caricati.
Carica tutti	Consente di caricare tutti i casi sul cloud.
Annulla tutto	Annulla tutte le richieste di upload.
	Consente di caricare il caso sul cloud.
	Annulla il caricamento del caso.
	Riprova a caricare il caso.

Download

Casi totali/Casi selezionati	Consente di visualizzare il numero di tutti i casi o di quelli selezionati che devono essere scaricati.
Scarica tutti	Consente di scaricare tutti i casi sul PC.
Annulla tutto	Annulla tutte le richieste di download.
	Consente di scaricare il caso sul PC.
	Annulla il download del caso.



Riprova a scaricare il caso.

Stato della rete

Medit Link consente di utilizzare agevolmente tutte le funzioni quando si è connessi a una rete.

Per aiutare l'utente a verificare lo stato della connessione di rete in tempo reale, nella barra del titolo viene mostrata l'icona di stato della rete.

Se la connessione di rete non è buona, potrebbero verificarsi le seguenti limitazioni:

- Alcune funzioni, come l'ordinazione e la creazione di un caso, la condivisione tramite Case Talk e la sincronizzazione cloud, saranno limitate.
- Le prestazioni complessive del servizio possono ridursi a causa dell'effetto dell'ambiente di rete.

In questo caso, è possibile accedere alla modalità Offline per svolgere attività di base e utilizzare le funzioni che richiedono Internet una volta connessi.

iNota

Il simbolo della rete indica la velocità di risposta tra l'area corrente e AWS (Amazon Web Service). Non indica la velocità della rete dell'utente, quindi a volte potrebbe mostrare lo stato come scarso o pessimo anche se la rete ha una velocità sufficiente.


Se l'altro processo sfrutta la stessa rete, la velocità potrebbe risultare scarsa o pessima e le prestazioni complessive di Medit Link potrebbero essere negative. In questo caso, evitare di condividere la rete con altri processi.

Ad esempio, la funzione "Carica dati non elaborati" è una parte importante del processo di rete. Se il simbolo mostra uno stato scarso o pessimo, recarsi su Impostazioni > Carica dati non elaborati e disattivare "Carica automaticamente".

Menu

Dashborad


È possibile consultare le statistiche per l'intero lavoro svolto su Medit Link tramite grafici e diagrammi visualizzabili, sia in Medit Link App che su Medit Link Web.

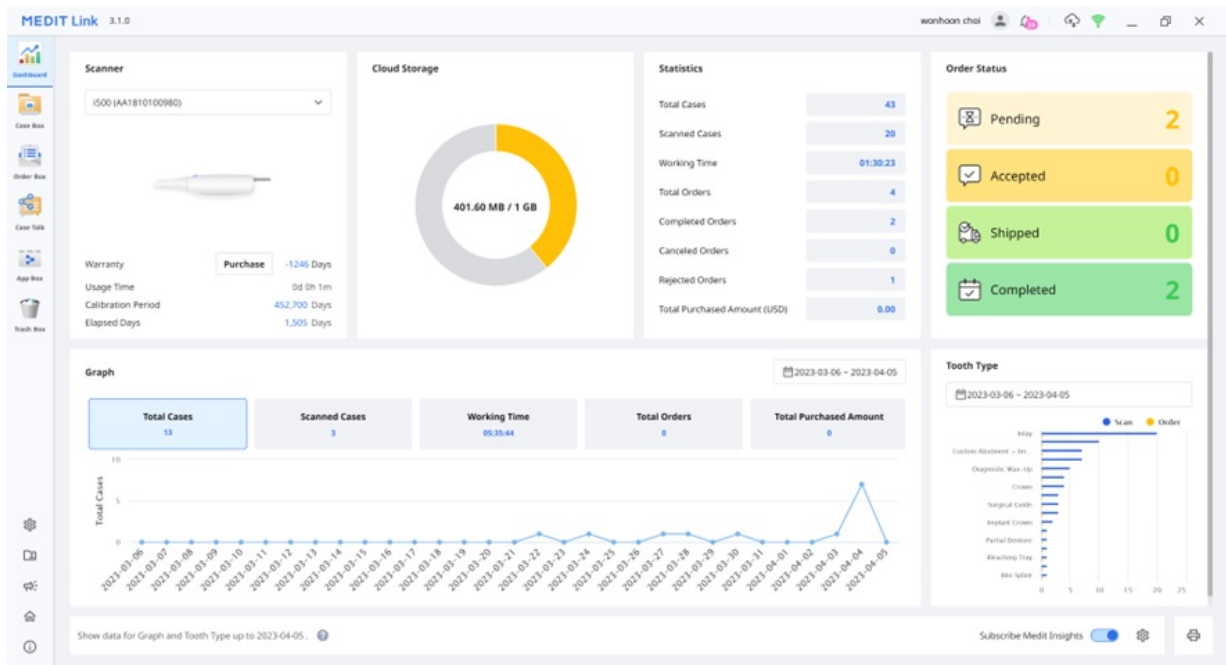

INota

Per maggiori informazioni sulla dashboard e su Medit Insights, fare riferimento a [Medit Link Web > Dashboard](#).

Case Box/Work Box

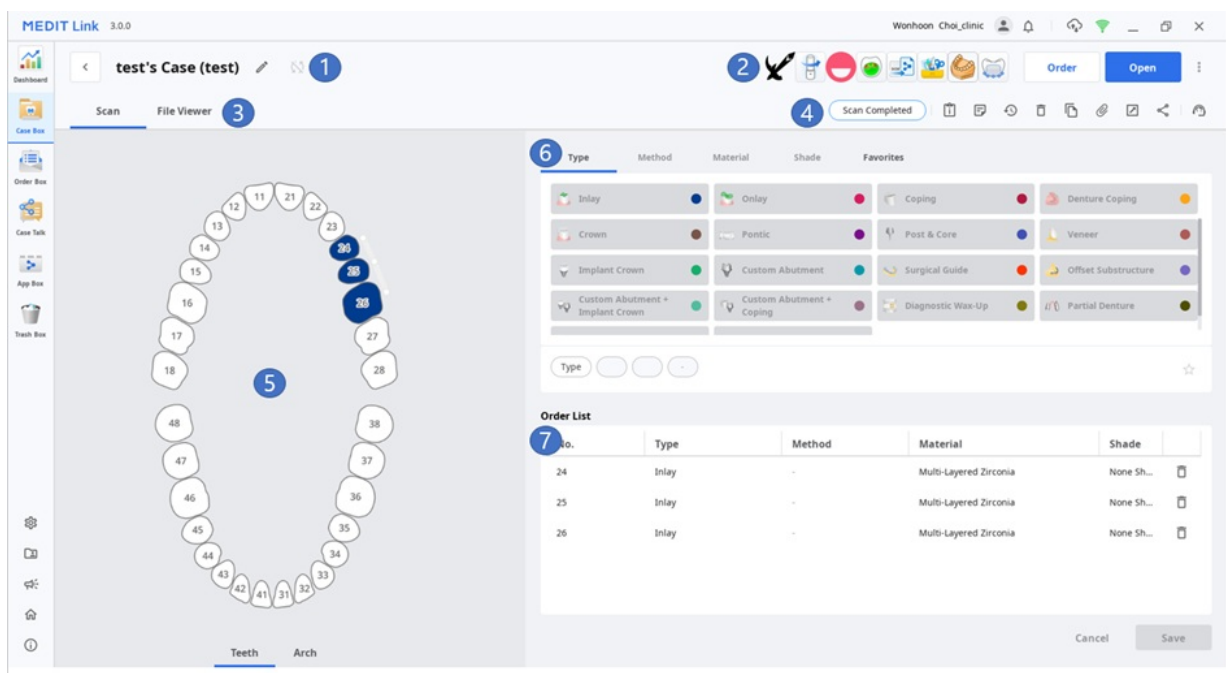

1	Mostra il nome del caso e il nome del paziente.
2	Fornisce le funzionalità chiave disponibili: pulsanti Ordine/Scansione(Apri)/Ordine e icone delle app.
3	Mostra le schede disponibili: Modulo, CAD e Visualizzatore file.
4	Mostra le funzioni per la gestione di casi e file:
5	Mostra l'interfaccia utente di registrazione del modulo per il programma CAD selezionato.
6	Fornisce le informazioni su tipo/metodo/materiale/tonalità che gli utenti possono scegliere per il numero di dente selezionato.
7	Mostra le informazioni su tipo/metodo/materiale/tonalità applicate ai denti selezionati.

Schede in Case Box/Work Box

Modulo	CAD	Visualizzatore file
La scheda relativa al modulo fornisce un'interfaccia utente per l'inserimento delle informazioni di base per il lavoro di scansione, come il tipo, il metodo e il materiale per i numeri dei denti, oltre alle opzioni di scansione. Le informazioni inserite vengono trasmesse al programma di scansione connesso e utilizzate come informazioni sull'ordine quando si effettua un ordine con il collaboratore.	La scheda CAD fornisce un'interfaccia utente per impostare le opzioni CAD. Le informazioni impostate vengono trasmesse al programma CAD connesso.	Consente di visualizzare i file dei risultati generati dai programmi di scansione e CAD. Il visualizzatore file mostra e gestisce le immagini 2D e i modelli 3D acquisiti o allegati.


Funzioni in Case Box/Work Box

In Case Box/Work Box sono disponibili le seguenti funzioni.

	Stato del caso	Mostra lo stato del caso.
	Vai ai dettagli	Fornisce una scorciatoia per lo stesso caso in un'altra box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informazioni sul caso	Consente di rivedere i dettagli del caso e salvarli come PDF o stamparli.
	Promemoria & Tag	Consente di aggiungere un promemoria o dei tag quando si registra o si ordina un caso. Utilizzare queste funzioni per comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva o supplementare sul caso ai collaboratori.
	Cronologia del caso	Fornisce informazioni dettagliate sulla cronologia del caso. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close

	Elimina	Elimina il caso. Non è possibile eliminare i casi ordinati o quelli creati offline.
	Clona	Consente di creare un duplicato del caso corrente in Case Box. Tutti i dati verranno copiati nel caso clonato. Questa funzione consente di replicare le informazioni sul trattamento per il medesimo paziente o di effettuare un ordine aggiuntivo con le stesse informazioni o file.
	Allega	Consente di allegare file in diversi formati.
	Esporta	Consente di esportare i file dei risultati di scansione o CAD sul PC locale. È possibile scegliere il formato di file preferito durante l'esportazione dei file. I file esportati possono essere utilizzati per ulteriori lavori nei software CAD e CAM.
	Condividi	Consente di creare un link per la condivisione. Gli utenti in possesso del link condiviso possono accedere ai dati 3D in un browser come Chrome, Firefox o Safari senza installare programmi aggiuntivi. È possibile condividere liberamente il link con chiunque o solo con persone specifiche. È inoltre possibile impostare un codice PIN o una data di scadenza del link per proteggere le informazioni riservate.
	Invia richiesta di assistenza	Porta a una pagina del Centro assistenza Medit per inviare una richiesta di assistenza.


Order Box/In Box

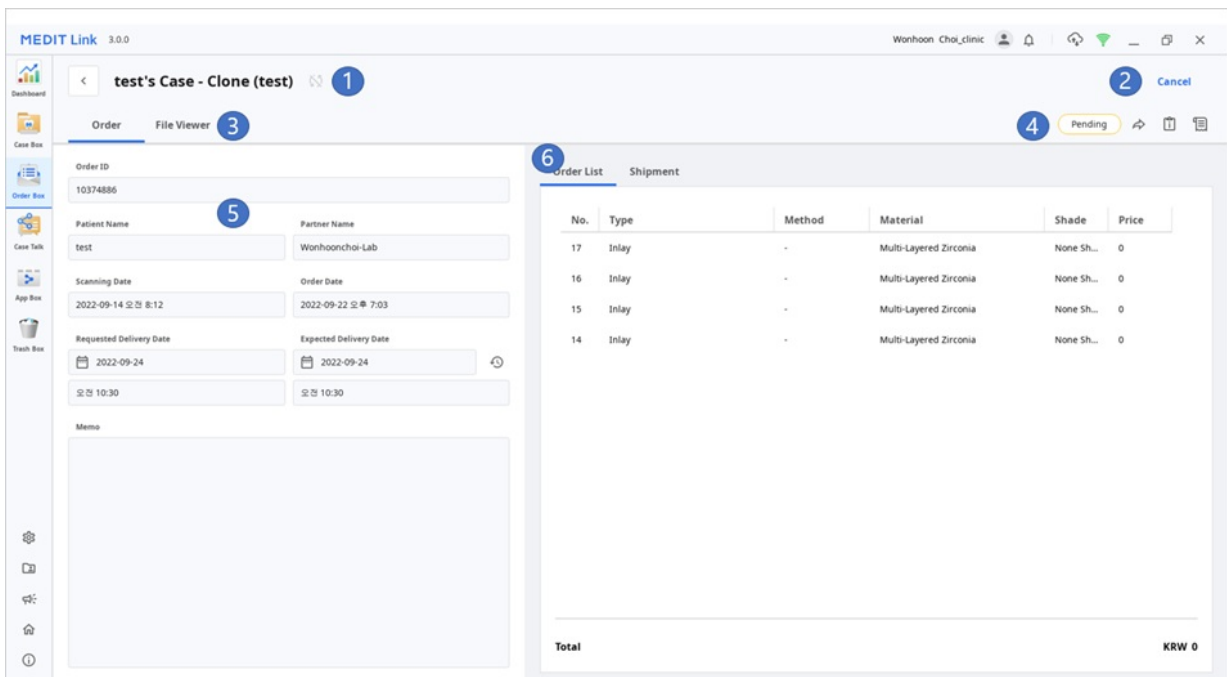

1	Mostra il nome del caso e il nome del paziente.
2	Fornisce funzioni per la gestione degli ordini (accettazione/cancellazione; consegna/ricezione).
3	Mostra le schede disponibili: Ordine, Visualizzatore file

4	Mostra le funzioni per la gestione di casi e file: stato del caso, comandi rapidi per informazioni dettagliate, informazioni sul caso, promemoria & tag, ecc.
5	Mostra informazioni dettagliate relative all'ordine, come il numero dell'ordine, il nome del paziente, il nome del collaboratore, la data di scansione, la data dell'ordine, la data di consegna e promemoria & tag.
6	Mostra informazioni sul prodotto ordinato e sullo stato della consegna.

È possibile scaricare le app disponibili da Medit Apps e Partners App per creare protesi dentali, analizzare i dati di scansione, assistere l'utente durante un consulto o semplificare il processo di lavoro.

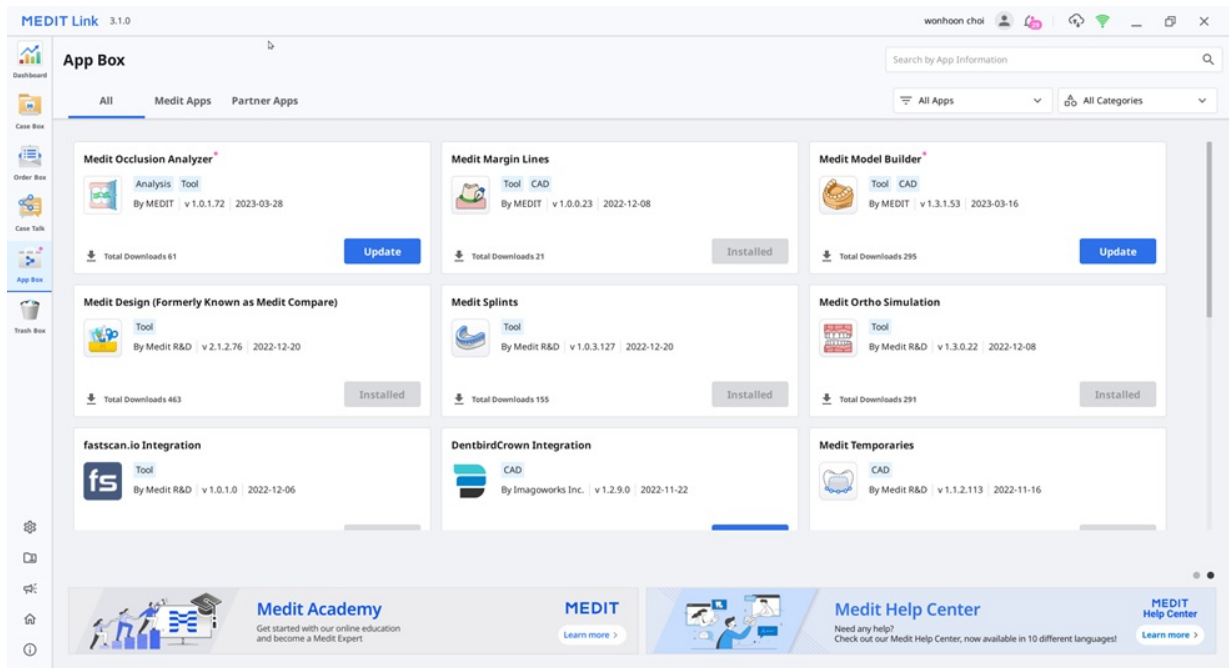


Trash Box

Trash Box memorizza temporaneamente i casi eliminati. Tutti i casi presenti in Trash Box possono essere ripristinati o eliminati definitivamente.

⚠️ Attenzione

I dati eliminati da Trash Box verranno cancellati definitivamente dal PC e dal server e non potranno essere ripristinati.

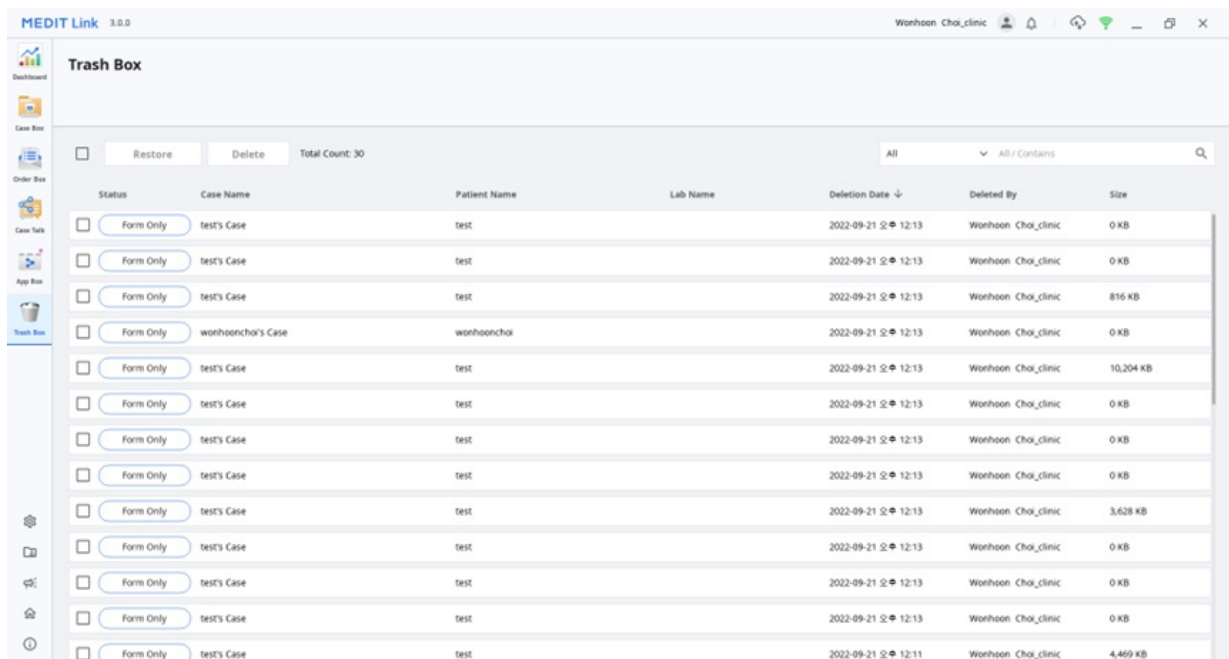

Impostazioni

Per maggiori informazioni sulla finestra Impostazioni, si prega di fare riferimento a [Medit Link App > Impostazioni](#).

Gestione del paziente

È possibile aggiungere, modificare, rimuovere o unire i pazienti nella finestra Gestione del paziente.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	grrt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试(测试)				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Aggiungere un nuovo paziente

1. Cliccare su "Nuovo paziente".

New Patient

Patient Name*

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

2. Inserire le informazioni necessarie nella finestra di dialogo Nuovo paziente, quindi cliccare su "Salva".

Rimuovere il paziente

iNota

È possibile rimuovere un paziente solo quando non sono presenti casi per lo stesso.

1. Selezionare il paziente per rimuoverlo dall'elenco.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.J Abutment?				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	salkjadskf				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Cliccare su "Rimuovi".

Unire i pazienti

È possibile unire tutti i casi di più pazienti in un unico paziente.

1. Selezionare dall'elenco i pazienti che si desidera unire.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_1eech?				1	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_1eech2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2 1231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. Cliccare su "Unisci i pazienti".
3. Selezionare il paziente target in cui si desidera unire tutti i casi.
4. Tutti i casi vengono uniti nel paziente target. Le informazioni del paziente target vengono mantenute.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Cliccare su "Applica" per procedere con l'unione.

Avvisi & aggiornamenti

È possibile visualizzare gli avvisi importanti di Medit e gli aggiornamenti di programma del software Medit.

Vai su Medit Link Web

L'utente verrà indirizzato a Medit Link Web con l'account con cui è attualmente connesso.

Informazioni Medit

È possibile ricevere informazioni sull'utilizzo di Medit Link. Accedere alle risorse educative e informative di Medit, come Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro assistenza Medit.

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

Impostazioni

Generale

Fornisce opzioni per la configurazione generale del sistema.

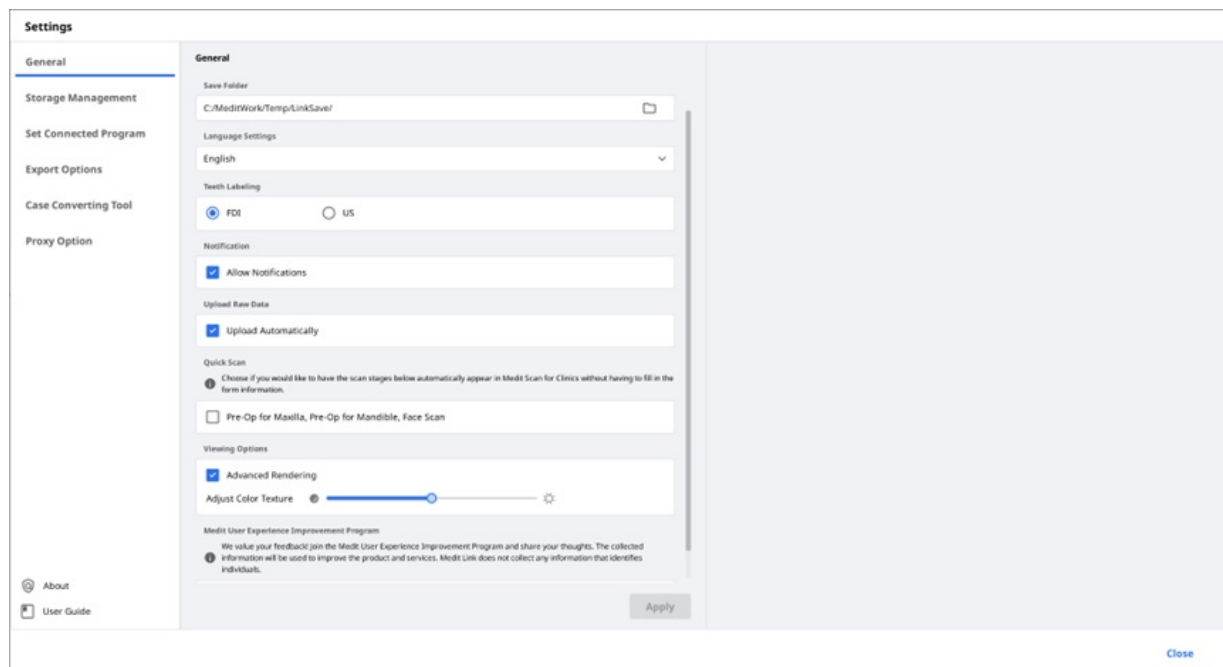

Cartella di salvataggio	Consente di specificare una cartella in cui archiviare i dati dei risultati generati in Medit Link e programmi collegati.	
Impostazioni lingua	Consente di selezionare la lingua del programma.	
Etichettatura dei denti	Consente di selezionare un sistema di etichettatura dei denti, scegliendo tra FDI e US.	
Notifiche	Quando questa opzione è attiva, l'utente riceverà notifiche relative agli aggiornamenti del programma.	
Carica dati non elaborati	Quando questa opzione è attiva, i dati non elaborati verranno caricati automaticamente nel cloud. La funzione aiuta a effettuare il backup dei dati originali ed eseguire una scansione fluida quando si utilizza Medit Link con lo stesso account su un altro PC. Il backup dei dati originali nel cloud si applica esclusivamente ai dati acquisiti in Medit Scan for Clinics.	
Scansione rapida	Consente di scegliere se si desidera visualizzare automaticamente le seguenti fasi di scansione in Medit Scan for Clinics senza dover compilare le informazioni del modulo. • Pre-operazione per mascella • Pre-operazione per mandibola • Scansione del viso	
Opzioni di visualizzazione	Rendering avanzato	Quando questa opzione è attiva, il modello 3D viene visualizzato in un rendering più vivido e realistico.
	Regola la texture del colore	Consente di regolare la luminosità del modello 3D. * I colori risultanti potrebbero differire leggermente da Medit Link quando si aprono gli stessi dati con altri software.


Programma di miglioramento dell'esperienza utente Medit

Consente all'utente di aderire al programma di miglioramento dell'esperienza utente Medit.

- Utilizziamo le informazioni raccolte per migliorare i nostri prodotti e servizi.
- Non raccogliamo alcuna informazione che identifichi le persone.

Gestione dell'archiviazione

Consente di controllare e gestire lo spazio di archiviazione locale e cloud.

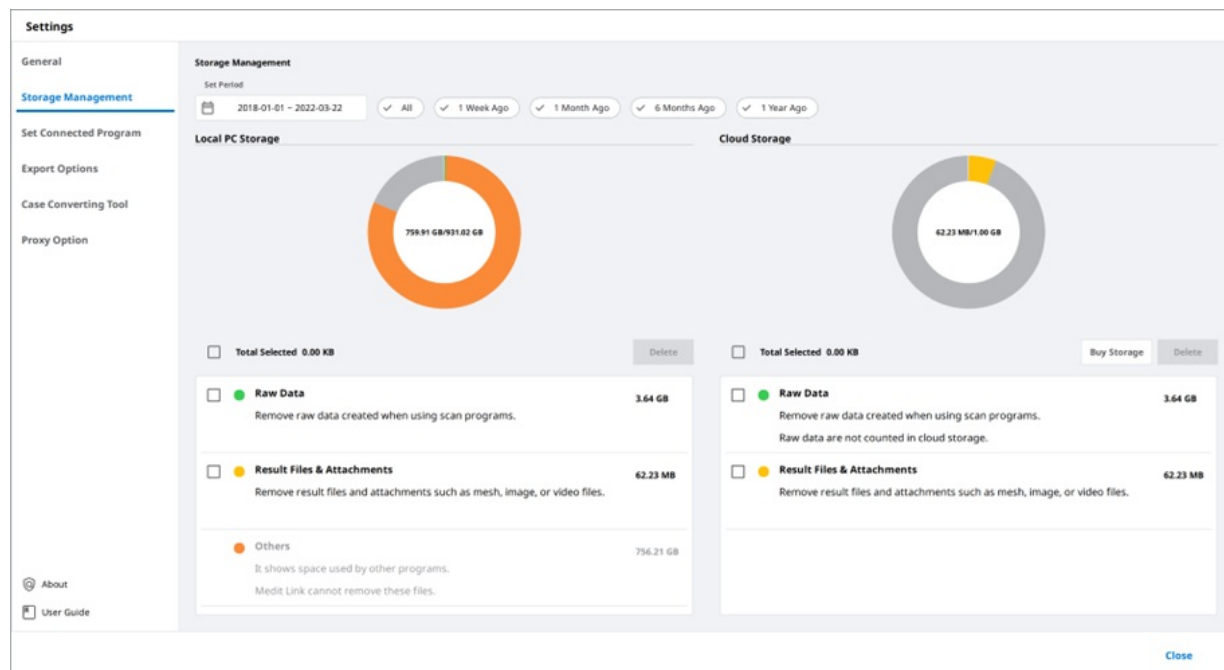

Imposta il periodo

Consente di impostare il periodo specifico per eliminare i dati creati entro l'intervallo di tempo indicato di seguito.

- Tutto: mostra tutti i file.
- 1 settimana fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorsa una settimana.
- 1 mese fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un mese.
- 6 mesi fa: mostra i file dalla cui creazione sono trascorsi sei mesi.
- 1 anno fa: mostra i file dalla cui creazione è trascorso un anno.

Archiviazione locale

Consente di gestire lo spazio di archiviazione su PC.

Dati non elaborati	Consente di rimuovere i dati non elaborati selezionati dal PC. Se i dati non elaborati sono già stati caricati nel cloud, è possibile scaricarli e utilizzarli in qualsiasi momento.
Risultati & allegati	Consente di rimuovere i file dei risultati e gli allegati, come mesh, immagini e video, dal PC. Se questi file sono già stati caricati nel cloud, è possibile scaricarli e utilizzarli in qualsiasi momento.
Altri	Consente di visualizzare i file utilizzati per il funzionamento del sistema e di altri programmi. Mostra la memoria del PC. Non è possibile rimuovere questi file da Medit Link.

Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dal PC.
---------	--


Archiviazione cloud

Consente di gestire lo spazio di archiviazione cloud.

Dati non elaborati	I dati non elaborati non occupano spazio di archiviazione cloud, quindi non saranno nel grafico pi. Tuttavia, se necessario, è possibile gestire i dati non elaborati da qui (ad esempio, possono essere eliminati per proteggere le informazioni riservate del paziente, ecc.).
Risultati & allegati	I file dei risultati e gli allegati occupano spazio nel cloud. Se il cloud è pieno, è possibile ricavare più spazio di archiviazione rimuovendo i file superflui.
Acquista spazio di archiviazione	Se l'utente ha un piano Standard, può abbonarsi a quello Premium per aumentare il proprio spazio di archiviazione cloud.
Elimina	Consente di rimuovere i file selezionati dall'archivio cloud per liberare spazio di archiviazione.

Imposta programma collegato

Consente di gestire i programmi che supportano integrazioni in Medit Link.

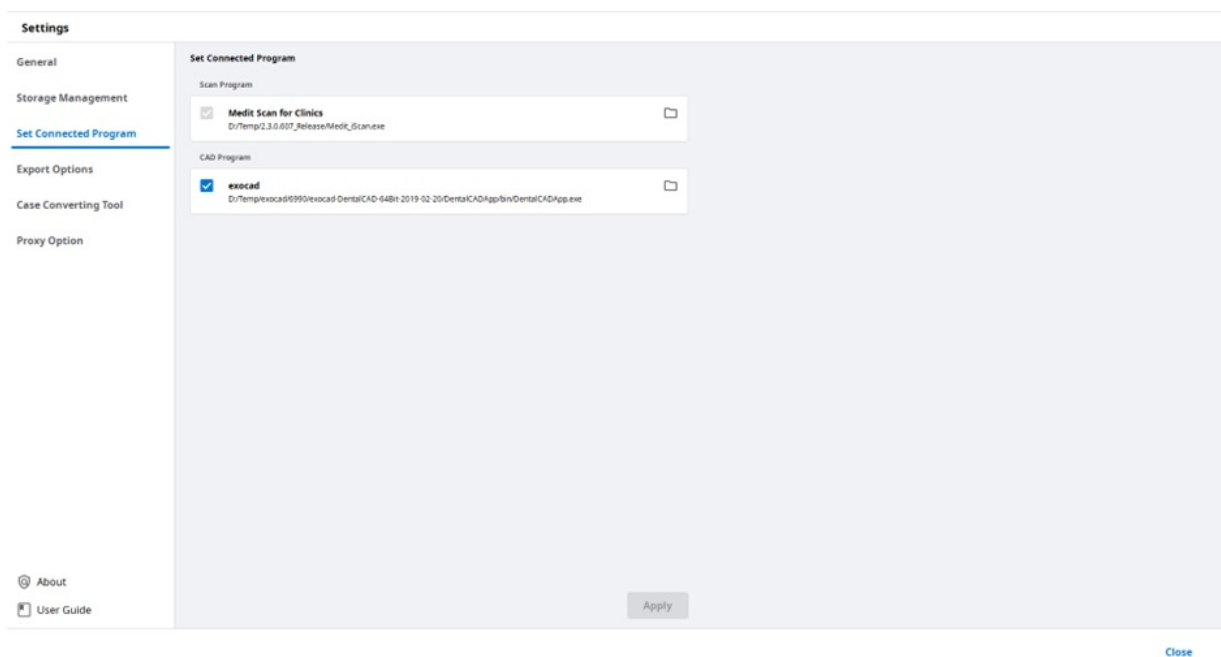

È possibile collegare i seguenti programmi:

	Account Clinica	Account Laboratorio
Programma di scansione	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
Programma CAD	exocad	exocad

Nota

L'integrazione dei seguenti servizi non è disponibile per Medit Link per Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Opzioni di esportazione

Consente di stabilire come esportare i file da Medit Link.

Tipologia CAD	Consente di selezionare il programma CAD che si desidera utilizzare per la progettazione. Il programma regolerà i risultati in base alla selezione dell'utente, consentendo di procedere con la progettazione senza ulteriori allineamenti degli assi.
Esporta i file in	Consente di specificare il percorso in cui si desidera archiviare i risultati.
Formato mesh	Consente di specificare il formato del file mesh finale.
Formato immagine	Consente di specificare il formato dei file di immagine esportati.
Comprimi & Combina	Comprimi i file: comprime tutti i risultati in un unico file. Combina mesh individuale: combina tutti i risultati per la mascella o la mandibola in un unico file. Quando si utilizzano programmi che non possono importare e lavorare con più file, è possibile unirli in uno per lavorare in quei programmi.
Opzioni quando la stessa cartella o file esiste già.	Consente di scegliere l'azione predefinita per i casi in cui esistono la stessa cartella o nome file nel percorso di destinazione. • Chiedere sempre durante l'esportazione. • Esportare un nuovo file e sovrascrivere quelli esistenti. Il file attualmente archiviato andrà perso. • Creare una cartella ed esportare i file

Regola per il nome della cartella	Consente di stabilire le regole per la creazione di un nome di cartella durante l'esportazione dei file. Le regole impostate verranno applicate alla denominazione della cartella e il file esportato verrà salvato nella cartella creata. È possibile utilizzare le seguenti informazioni per impostare la regola. - Account clinica Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID del paziente, ID dell'ordine - Account laboratorio Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID dell'ordine
Regola per il nome del file	Consente di stabilire le regole per il nome del file esportato. È possibile utilizzare le seguenti informazioni per impostare la regola. - Account clinica Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID del paziente, ID dell'ordine - Account laboratorio Data di creazione del caso, Data di scansione, Data dell'ordine, Nome del paziente, Nome del caso, Nome del collaboratore, ID dell'ordine

Strumento di conversione dei casi

Consente di spostare i casi tra diversi account.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 바울남자연구소2	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55


Close

Come utilizzare lo strumento di conversione dei casi

1. Aprire Medit Link e cliccare su "Impostazioni".

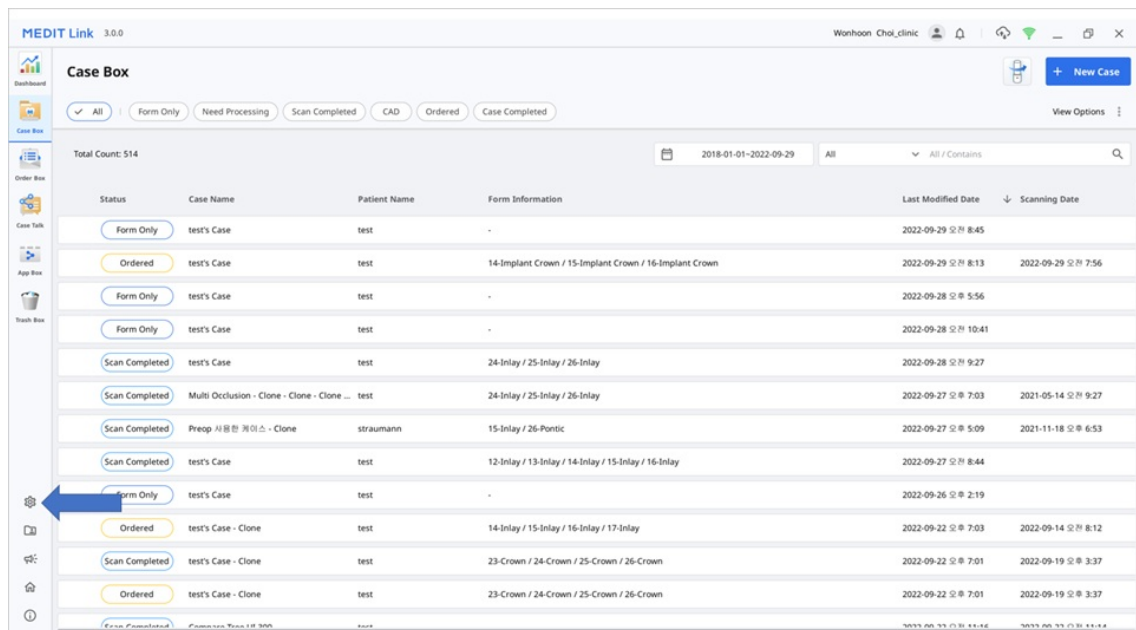


2. Scegliere la sezione "Strumento di conversione dei casi" nel menu a sinistra.

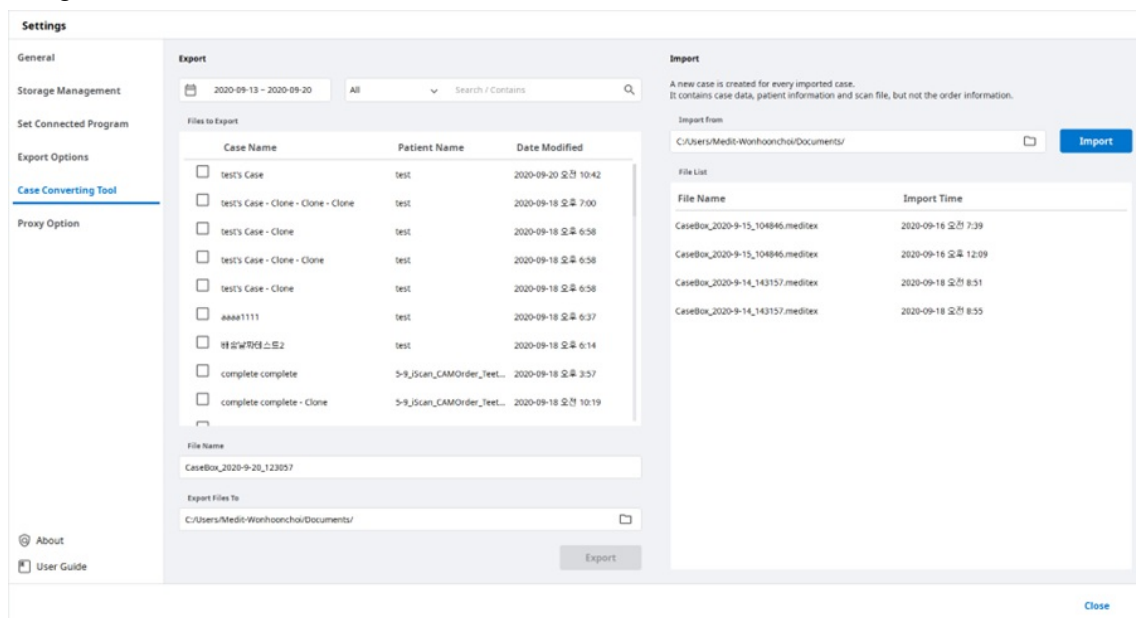

3. Nella sezione di importazione, cliccare sull'icona della cartella per cercare nel PC il file .meditex che si desidera importare.


4. Cliccare sul pulsante "Importa" e cercare il file importato nell'elenco di file sottostante.

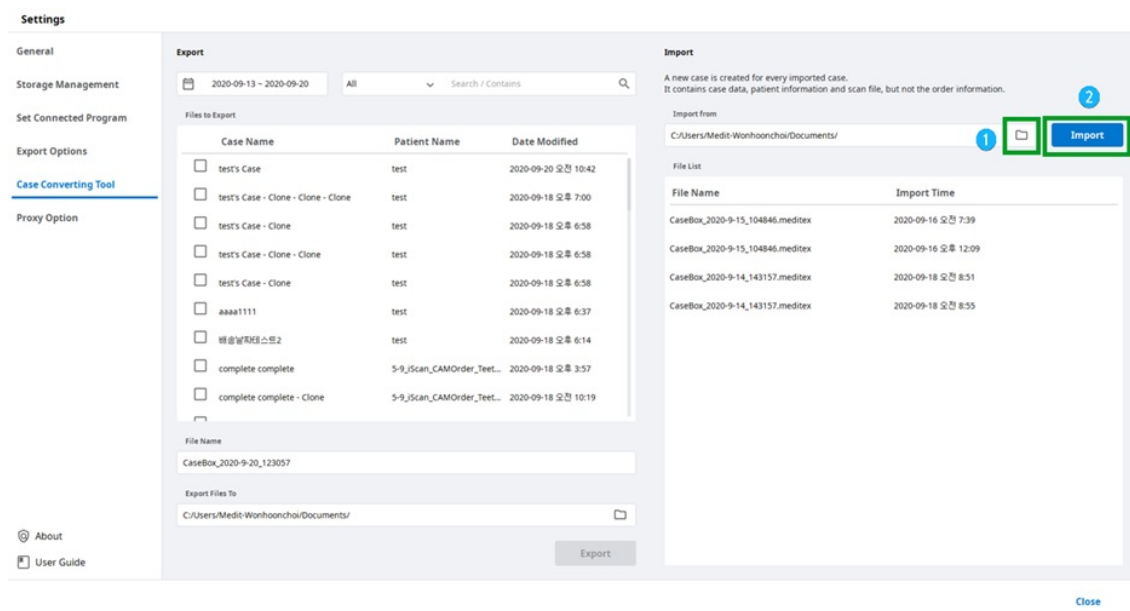

- Il caso importato verrà anche visualizzato in Case Box (account Clinica) o in Work Box (account Laboratorio).


Opzioni proxy

In alcuni ambienti di rete limitati, è possibile modificare le impostazioni di rete.

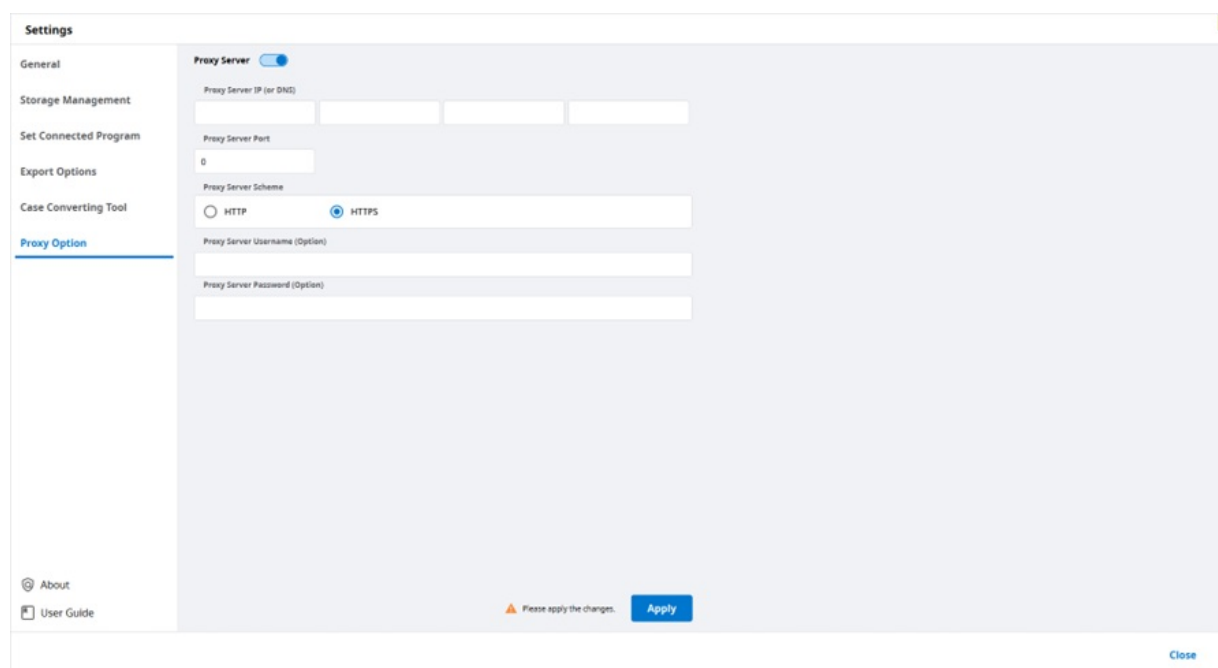

Informazioni

Mostra informazioni dettagliate su Medit Link.

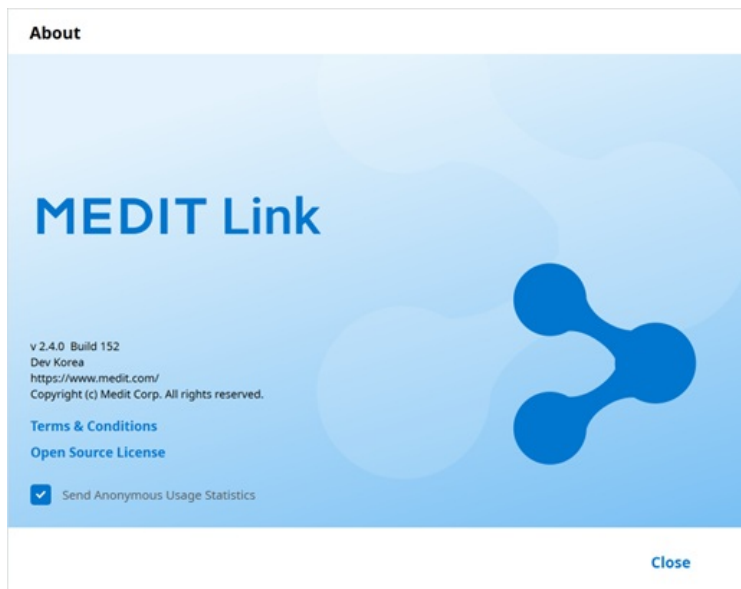

Manuale utente

Consente di scaricare il manuale utente per Medit Link.

È necessaria una connessione a Internet per aprire il manuale utente.

Visualizzatore file

Visualizzatore file raggruppa e mostra diversi dati, compresi i dati acquisiti da programmi collegati a Medit Link e i dati allegati dagli utenti.


Fornisce funzioni di gestione di base, come mostra/nascondi i dati, regola l'opacità ed elimina i dati.

Supporta anteprime dei file nei seguenti formati:

- dati 3D: STL, OBJ, PLY
- immagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- File video: MKV, MP4, AVI, WMV

Albero dei dati

È possibile raggruppare e visualizzare tutti i dati del caso nell'albero dei dati. È inoltre possibile mostrare/nascondere i dati, regolare la trasparenza ed eliminare i dati dall'albero dei dati.




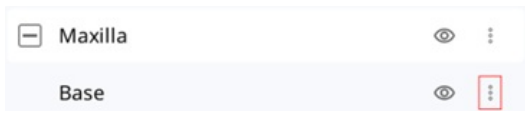
	Mostra/Nascondi	Consente di mostrare o nascondere i dati.
	Opacità	La barra di scorrimento viene visualizzata quando si clicca su uno dei dati nell'albero dei dati. È possibile regolare l'opacità dei dati visualizzati spostando la barra di scorrimento. 
	Altro	Cliccando sull'icona Altro vengono mostrate le funzionalità aggiuntive disponibili.  • Mostra solo questo: nasconde tutti gli altri dati ma mostra solo quelli corrispondenti. • Nascondi: nasconde i dati. • Duplica: copia i dati e li aggiunge al gruppo di allegati. • Esporta: esporta i file selezionati. • Rinomina: modifica il nome dei dati. • Elimina: elimina i dati.

iNota

È possibile rinominare i dati quando si è online.

Strumenti di controllo del modello

Controllo del modello 3D

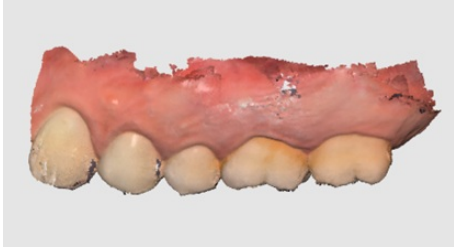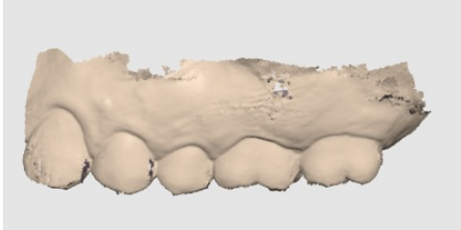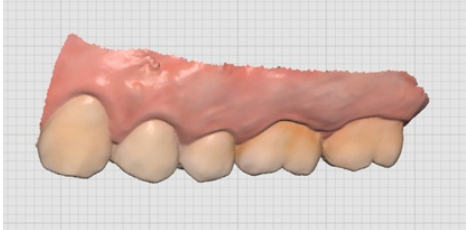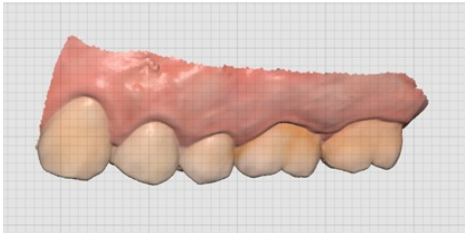	Panoramica	Sposta il modello.
	Ruota	Ruota il modello.
	Ingrandisci/riduci lo zoom	Ingrandisce o riduce lo zoom sul modello.
	Adatta lo zoom	Posiziona il modello al centro della schermata.
	Modalità di visualizzazione del modello	Texture on Mostra i dati con i colori reali della texture. 
		Texture off Mostra i dati in un unico colore. 
	Impostazioni griglia (mm)	Griglia On Mostra la griglia sullo sfondo. 
		Sovrapposizione On Sovrappone la griglia al modello. 
		Griglia Off Nasconde la griglia.

Controllo delle immagini 2D

	Immagine precedente/successiva	Consente di spostarsi tra le immagini.
	Modifica	Consente di modificare l'immagine.


	Stringi/incolla finestra	È possibile staccare la finestra dell'immagine e regolarla nella posizione desiderata. È inoltre possibile ridimensionare la finestra. Quando la finestra viene ripristinata nella sua posizione originale, torna alla dimensione predefinita.
---	--------------------------	--

Strumenti di funzione

Acquisizione delle immagini e Promemoria


Consente di acquisire la schermata attuale come immagine 2D, disegnarci sopra o aggiungere note.

È possibile salvarla come file con le note e inviarla come riferimento.

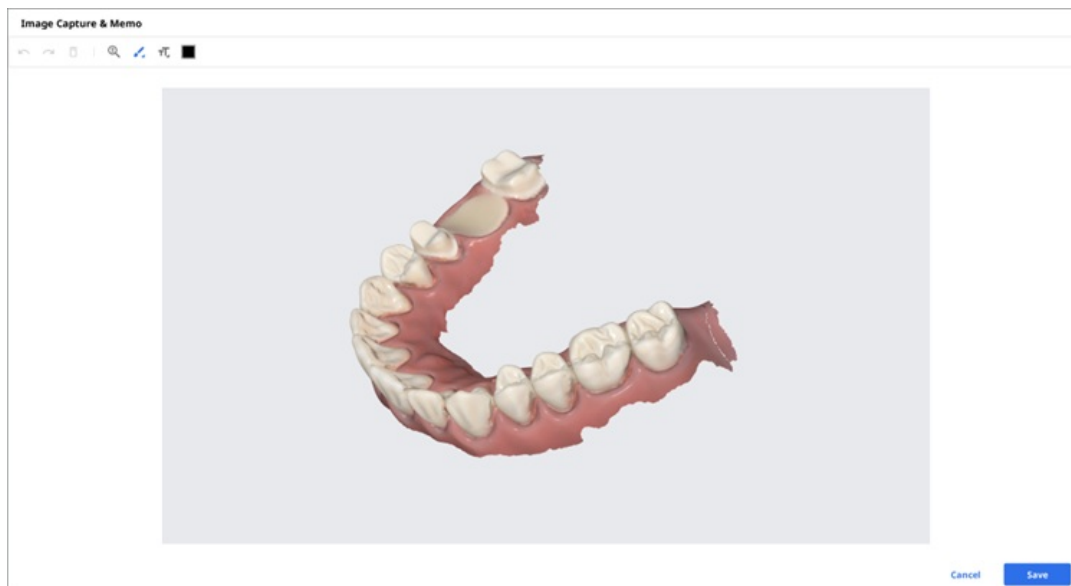

Acquisizione ortodontica

Consente di acquisire le immagini nell'attuale direzione di visualizzazione e in alto/in basso/a sinistra/a destra dell'attuale direzione di visualizzazione.

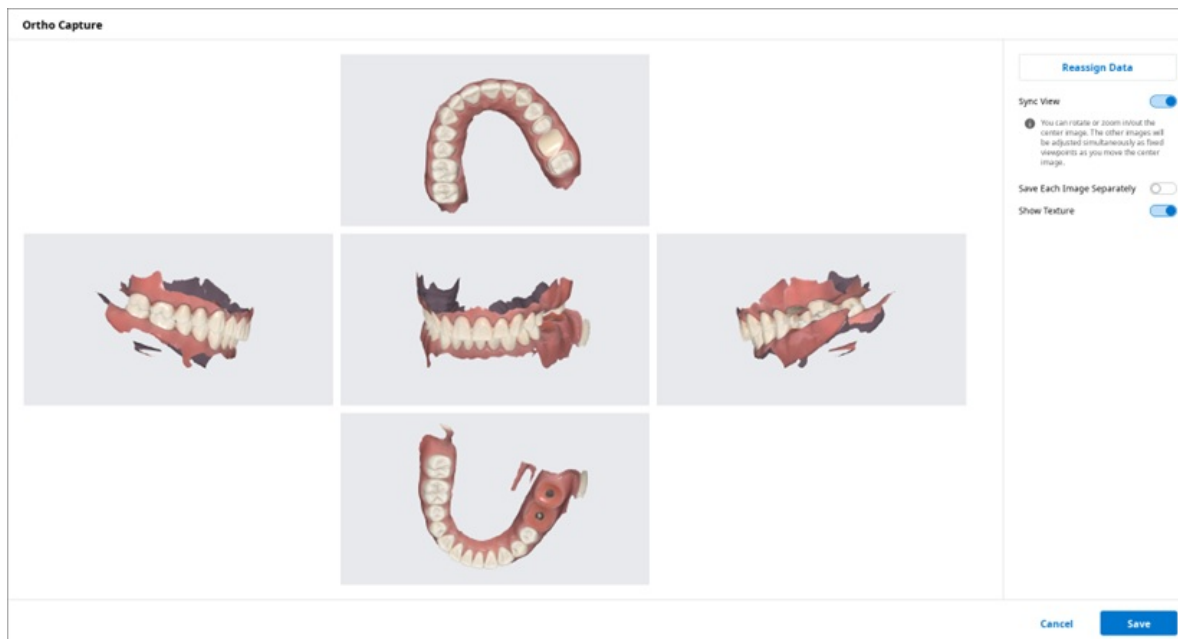

Sincronizza la vista

Quando questa opzione è attiva, è possibile ruotare o ingrandire/ridurre lo zoom sull'immagine centrale. Le altre immagini verranno regolate simultaneamente come punti di vista fissi man mano che si sposta l'immagine centrale.

Quando questa opzione è disattivata, è possibile eseguire la panoramica, ruotare o ingrandire/ridurre lo zoom su tutte le immagini singolarmente.

Salva separatamente ogni immagine


Consente di salvare ogni immagine in alta risoluzione.

Mostra la texture

Attiva/disattiva la texture per il modello.

Riassegna i dati


Modificare i dati per la mascella/mandibola con la funzione Riassegna i dati. È possibile utilizzare i dati modificati per creare e utilizzare le immagini dei risultati di Acquisizione ortodontica.

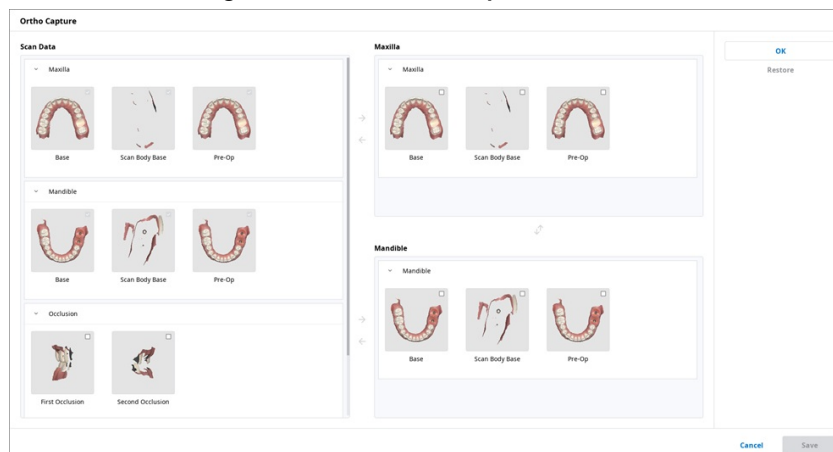

- Dati di scansione: vengono visualizzati tutti i dati di scansione per il caso.
- Mascella: vengono visualizzati i dati selezionati per la mascella.
- Mandibola: vengono visualizzati i dati selezionati per la mandibola.


Riempi i vuoti

Consente di riempire i vuoti nei dati mesh 3D.

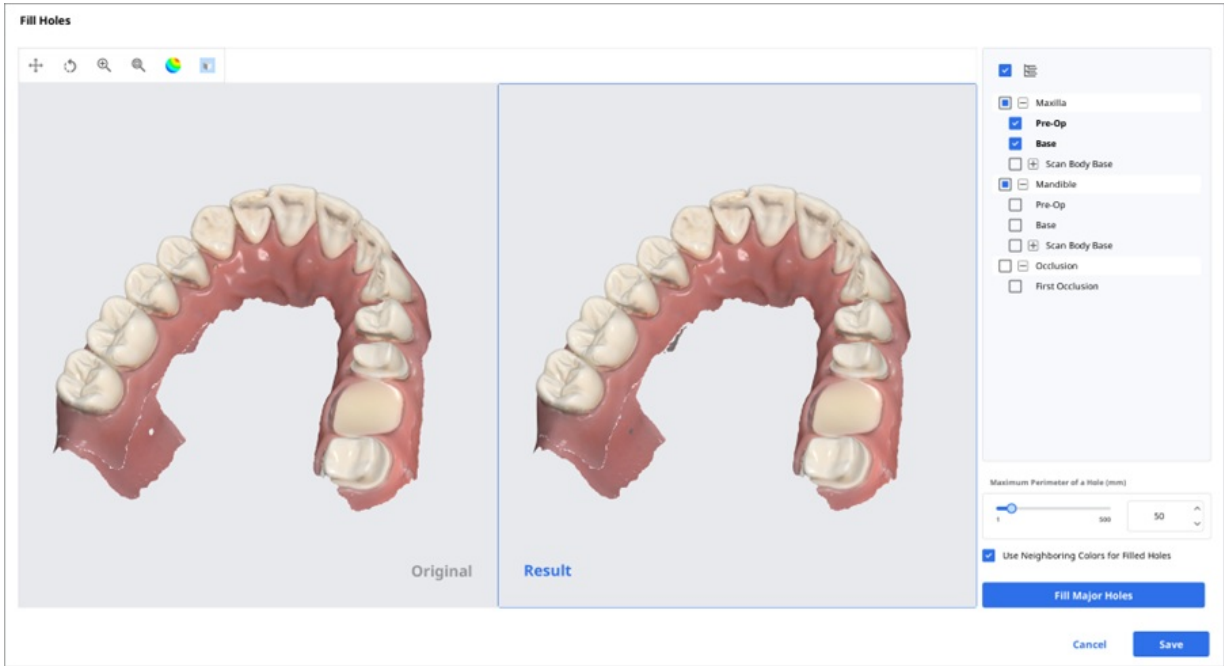

Ritaglio

La funzione Ritaglio fornisce diversi strumenti per modificare i dati.

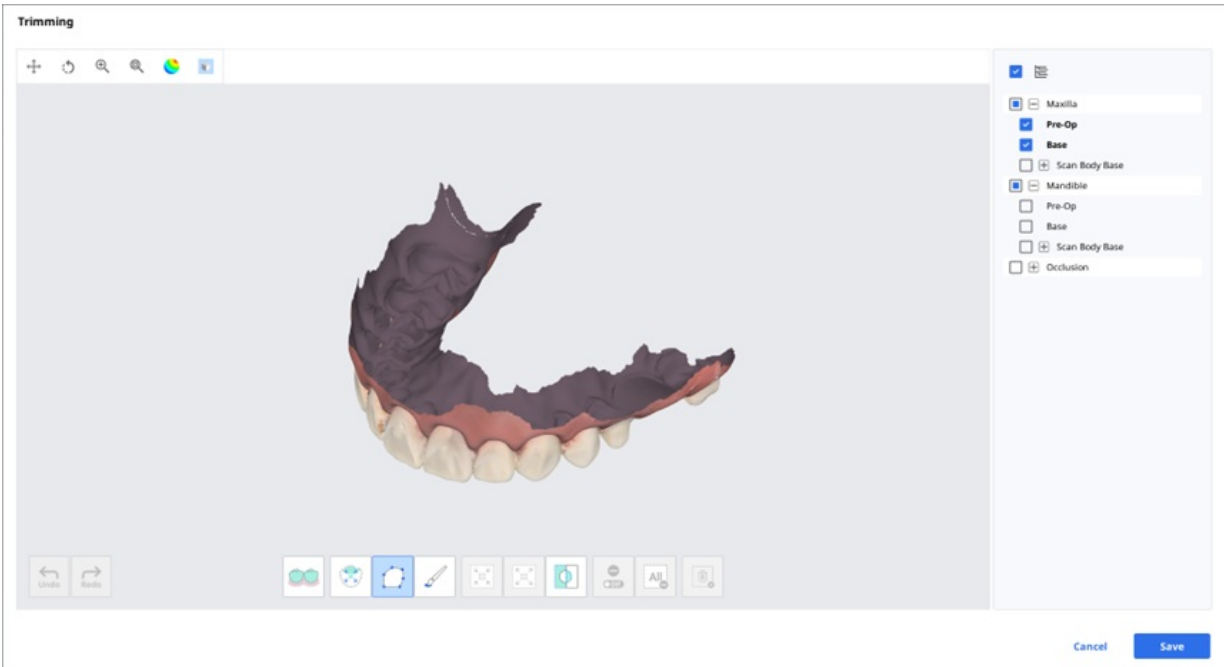


I dati mesh 3D selezionati possono essere modificati attraverso strumenti diversi situati nella parte inferiore della finestra.

		Consente di selezionare automaticamente tutti i denti dell'arcata tralasciando le parti della gengiva. Nota Questa funzione è disponibile esclusivamente per i dati di scansione acquisiti tramite Medit Scan for Clinics con l'opzione "Usa GPU" attiva.
		Selezione intelligente dei denti

Selezione		Selezione intelligente del singolo dente	Consente di selezionare automaticamente l'area di un singolo dente tralasciando le parti della gengiva. Cliccare, tenere premuto e trascinare il mouse sul dente.
		Selezione polilinea	Consente di selezionare tutte le entità comprese all'interno di una polilinea disegnata sulla schermata.
		Selezione pennello	Consente di selezionare tutte le entità presenti su un percorso disegnato a mano libera sulla schermata. Verrà selezionata solo la parte anteriore. Il pennello è disponibile in tre diverse dimensioni.
Regolazione dell'area selezionata		Restringi l'area selezionata	Consente di ridurre l'area selezionata ogni volta che si clicca sul pulsante.
		Espandi l'area selezionata	Consente di espandere l'area selezionata ogni volta che si clicca sul pulsante.
		Inverti l'area selezionata	Consente di invertire la selezione.
Deselezione		Seleziona/Deseleziona	Quando questa opzione è attiva, consente di deselegionare l'area utilizzando vari strumenti.
		Deseleziona tutto	Consente di deselegionare tutte le aree selezionate.
		Elimina l'area selezionata	Consente di eliminare i dati dall'area selezionata.


1. Selezionare l'area che si desidera ritagliare con gli strumenti di selezione dell'area.

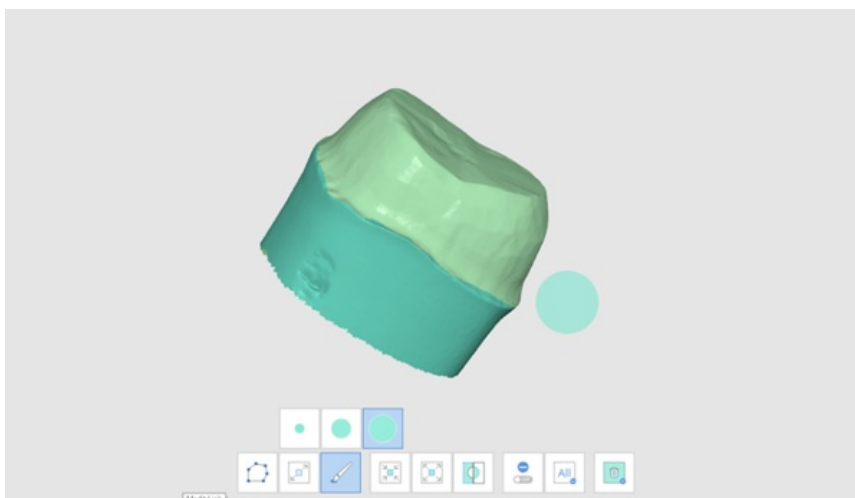


iNote

Lo strumento di ritaglio "Polilinea" seleziona tutte le entità comprese all'interno di una polilinea disegnata sulla schermata, mentre "Pennello" seleziona solo i dati della parte anteriore.


2. È possibile invertire, restringere o espandere la selezione con i seguenti tre strumenti.
 - Inverti l'area selezionata

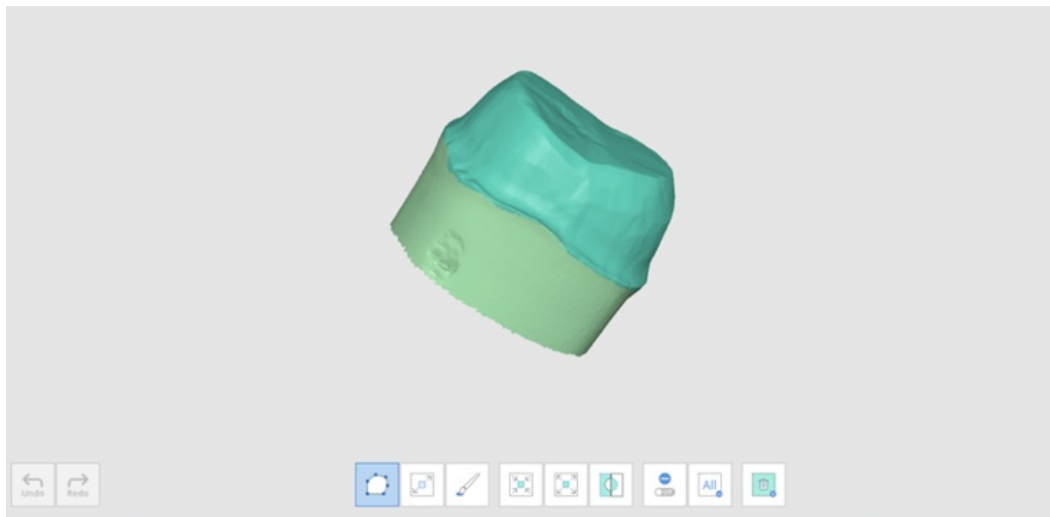

- **Restringi l'area selezionata**

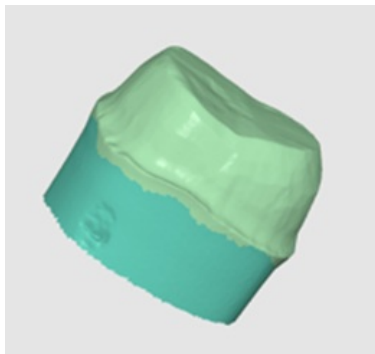

- **Espandi l'area selezionata**

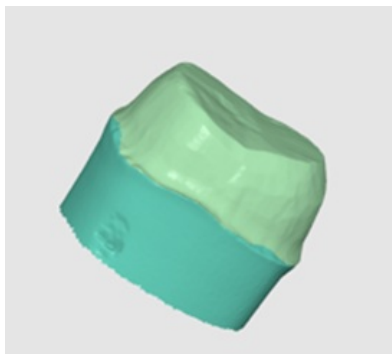

3. È possibile deselezionare le aree selezionate con lo strumento Elimina l'area selezionata.




Ottimizza l'allineamento dell'occlusione

Consente di ottimizzare l'allineamento dell'occlusione. È possibile scegliere i dati target e regolare l'allineamento dell'occlusione.




Livello di compensazione

Basso	Compensation Level	
Medio	Compensation Level	

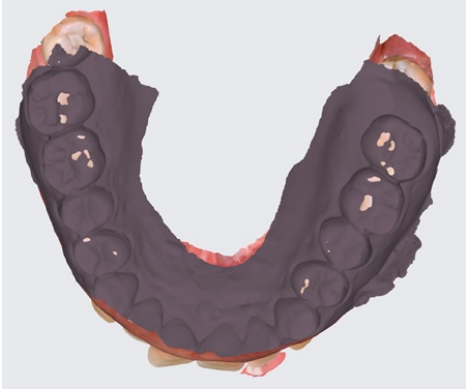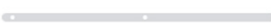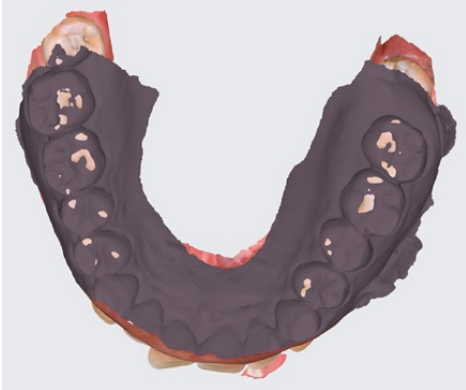Alto	Compensation Level ☒   	
Off	Compensation Level ☐   	

Movimento mandibolare

È possibile riprodurre i movimenti mandibolari registrati in Medit Scan for Clinics per visualizzare i contatti occlusali dinamici tra la dentatura superiore e quella inferiore.

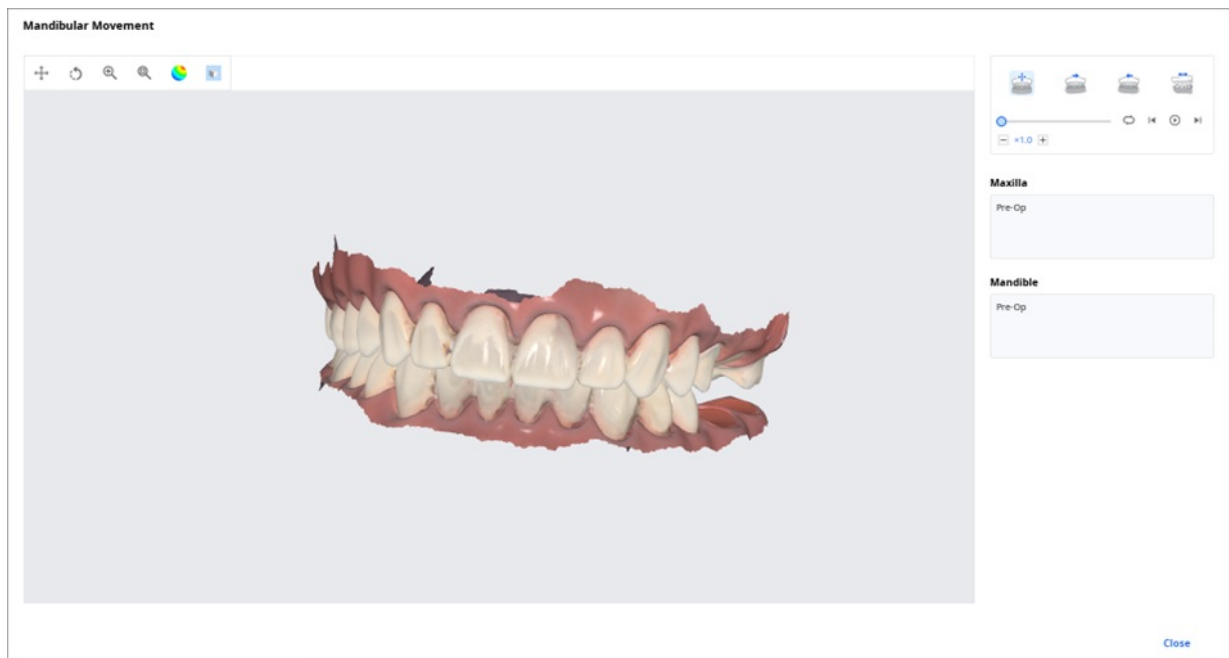

	Movimento libero	Consente di riprodurre la registrazione del movimento mandibolare libero.
	Movimento laterale sinistro	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola verso sinistra.
	Movimento laterale destro	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola verso destra.
	Movimento protrusivo	Consente di riprodurre la registrazione del movimento della mandibola in avanti.

Gestire i dati dell'occlusione multipla nel visualizzatore file

È possibile ottenere più risultati di dati di occlusione dall'applicazione Medit Scan.

Medit Link mette a disposizione dell'utente la funzione per gestire i risultati tramite il "Visualizzatore file".

Come gestire più risultati


Quando l'utente ottiene più risultati di occlusione da Medit Scan for Clinics, Medit Link offre la possibilità di selezionare un risultato.

I risultati sono elencati per nome ed è possibile selezionare un elemento.

Il modello selezionato verrà mostrato in "Albero dei dati" e "Area di visualizzazione del modello".



È possibile comprimere l'elenco e modificare l'elemento utilizzando le icone delle frecce.

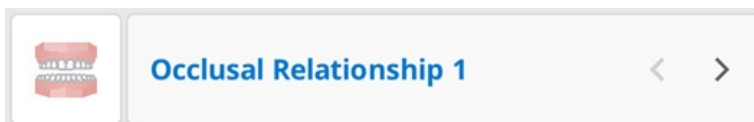

Opzioni di visualizzazione

È possibile modificare le opzioni di visualizzazione per personalizzare i layout dell'elenco dei casi in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Filtri di stato

Mostra o nasconde ogni filtro che rappresenta lo stato del caso. I filtri di stato nascosti non vengono mostrati sulla schermata in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Con i filtri visualizzati, è possibile trovare facilmente il caso di cui si necessita.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

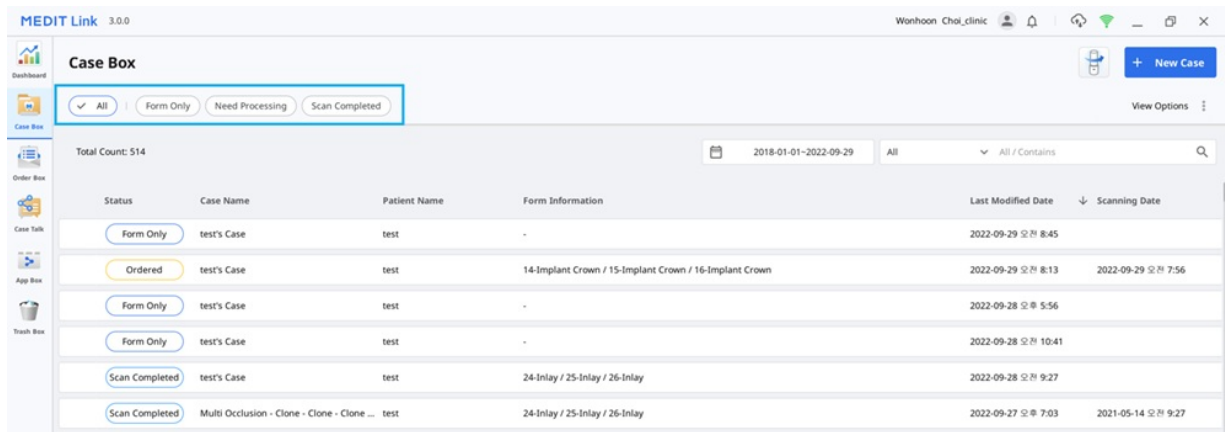

- È possibile cliccare sullo stato che si desidera visualizzare per vedere solo i casi in quello stato.
- È possibile selezionare più stati alla volta.

Opzioni di filtro disponibili per ogni box:

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed
In Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Non supportato

Elementi della tabella

Selezionare gli elementi da mostrare nell'elenco dei casi in Case Box/Work Box/In Box/Order Box. È possibile modificare l'ordine degli elementi della tabella o regolare la larghezza della colonna della tabella nella vista elenco per ottimizzarla all'ambiente dell'utente.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Tipo di vista

Consente di cambiare il tipo di vista, scegliendo tra Vista galleria e Vista elenco in Case Box.

Vista galleria

MEDIT Link 3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Box

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

Total Count: 644

2018-01-01-2022-10-28

All / Contains

+ New Case

View Options

test's Case

test

No Registered Form

2022-10-27 오전 8:59

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-26 오후 10:24

Scan Completed

Preop 사용한 케이스

straumann

Inlay 15

Pontic 26

2022-10-26 오후 7:44

Ordered

test's Case

test

Inlay 28

Crown 16

Custom Abutment + 21, 22, 23, 24, 25, 26

2022-10-26 오후 7:43

Scan Completed

주문테스트 1 - Clone

test

Inlay 16, 15, 14, 23, 24, 2...

2022-10-26 오후 12:15

Ordered

TreeTest20221026

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-26 오전 8:51

Scan Completed

temporaries - Clone - Clone

test

Crown 25, 27

Pontic 26

2022-10-25 오전 9:04

Ordered

R2.4.0_TAK_Medit Scan for Clinics_Basic_with ...

2.4.0 Data_TAK

Inlay 46

Crown 25, 27

Implant Crown 16, 36

2More

2022-10-24 오후 3:18

Scan Completed

temporaries

temporaries - Clone - Clone - Clone

주문테스트 1 - Clone - Clone

test's Case

Medit Link2.3.0 Release

Medit Link 2.3.0

2020-09-24

Implant Crown Zirconia

11, 12, 13, 14,...

Inlay Zirconia

3, 4, 5, 6, 7

Crown Metal

18, 19, 20, 21,...

1

2020-09-14 오전 7:43

Scan Completed

1	Nome del caso
2	Nome e data di nascita del paziente
3	Informazioni del modulo
4	Data di scansione
5	Stato del caso

Vista elenco

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

MEDIT Link3.0.2

Wonhoon Choi_clinic

+ New Case

Case Box

AllForm OnlyNeed ProcessingScan CompletedCADOrderedCase Completed

Total Count: 644

2018-01-01~2022-10-28AllAll / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32		
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39		
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33		
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07		
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Wonhoonchoi-Lab
Scan Completed	케이스해모있고주문해모수경한케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37	
Scan Completed	파일리스트테스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54	

Raggruppamento

Consente di selezionare un'opzione di raggruppamento per classificare e riorganizzare i casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone

None

Patient Name

Order Date

Scanning Date

SortingLast Modified Date >

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di raggruppamento:

Box	Raggruppamento
Case Box	Nessuna
	Nome del paziente
	Data di scansione
	Data dell'ordine
Order Box	Nessuna
	Data di scansione
	Data dell'ordine

	Data di consegna richiesta
In Box	Nessuna
	Data dell'ordine
	Data di consegna richiesta
Work Box	Nessuna
	Data di consegna richiesta

iNota

Le opzioni di raggruppamento e ordinamento non sono disponibili in Trash Box e Case Talk.

Ordinamento

Consente di selezionare un'opzione di ordinamento per modificare l'ordine dei casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

Ogni box dispone delle seguenti opzioni di ordinamento:

Box	Raggruppamento	Ordinamento
Case Box	Nessuna	Nome del paziente / Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Nome del paziente	Data dell'ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Data di scansione	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
	Data dell'ordine	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Data di scansione / Nome del laboratorio
Order Box	Nessuna	Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio
	Data di scansione	Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio

	Data dell'ordine	Nome del paziente / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio
In Box	Nessuna	Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data dell'ordine	Nome del paziente / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data dell'ordine / Nome della clinica
Work Box	Nessuna	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Data di consegna richiesta / Nome della clinica
	Data di consegna richiesta	Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Nome della clinica

iNota

Le opzioni di raggruppamento e ordinamento non sono disponibili in Trash Box e Case Talk.

Filtraggio e ricerca


Filtro per data

Consente di filtrare e visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro la durata impostata.

1. Cliccare sul filtro durata.

A date range filter box with a calendar icon on the left and the text "2020-08-10 ~ 2020-09-09" in the center.

2. Selezionare la durata dall'elenco.

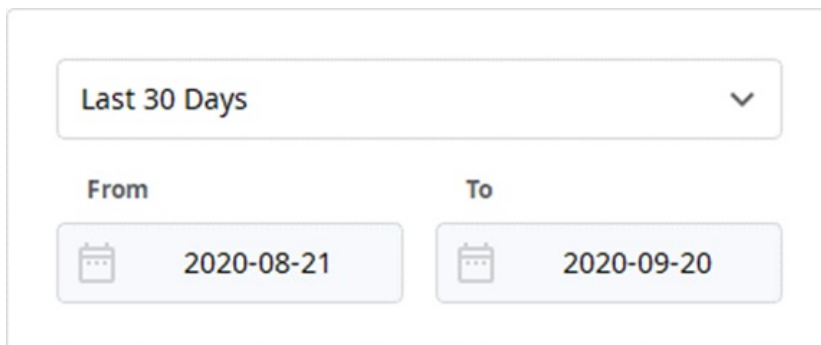
A duration filter interface. At the top is a dropdown menu with "Last 30 Days" selected and a downward arrow. Below this are two columns labeled "From" and "To". Under "From" is a date box with a calendar icon and "2020-08-21". Under "To" is a date box with a calendar icon and "2020-09-20".

- Tutto: mostra tutti i casi.
- Intervallo personalizzato: consente di specificare le date di inizio e fine per visualizzare i casi modificati per l'ultima volta entro quel periodo.
- Oggi: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta il giorno corrente.
- Ieri: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta il giorno prima.
- Ultimi 7 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta negli ultimi 7 giorni, escluso il giorno corrente.
- Ultimi 30 giorni: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta negli ultimi 30 giorni, escluso il giorno corrente.
- Mese corrente: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta durante il mese corrente.
- Mese precedente: mostra i casi la cui ultima modifica è avvenuta durante l'ultimo mese.

L'elenco dei casi verrà aggiornato in tempo reale con i casi creati o modificati per l'ultima volta entro la durata selezionata.

Funzionalità di ricerca avanzata

Consente di sfruttare le funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le informazioni desiderate.

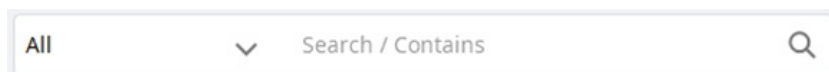An advanced search bar with a dropdown menu on the left showing "All" with a downward arrow, followed by the text "Search / Contains", and a magnifying glass icon on the right.

Per ogni box sono disponibili i seguenti criteri di ricerca:

Case Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Informazioni del modulo, Nome del laboratorio
Order Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, ID del paziente, Nome del laboratorio, ID dell'ordine
In Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, ID dell'ordine

Work Box	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Informazioni del modulo, Nome della clinica, ID dell'ordine
Case Talk	Nome del Case Talk (contiene), Nome del paziente (uguale a)
Trash Box (Clinica)	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome del laboratorio, Eliminato da
Trash Box (Laboratorio)	Tutto, Nome del caso, Nome del paziente, Nome della clinica, Eliminato da

È possibile selezionare i criteri di ricerca e scegliere tra le logiche Contiene e Uguale a.

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Creare/modificare/clonare/eliminare il caso

Creare i casi

Creare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sul pulsante "Nuovo caso" nell'angolo in alto a destra.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Inserire le informazioni di base, come il nome del paziente e il nome del caso.
 - Qualora si inserisca un nome non presente nell'elenco dei pazienti, verrà aggiunto un nuovo paziente.
 - Se invece si inserisce un nome presente nell'elenco dei pazienti, sarà possibile selezionarlo dall'elenco.
 - Se si registra un caso per un paziente esistente, cliccare sull'icona Elenco pazienti per selezionare un paziente esistente.



- Nella finestra di dialogo Elenco pazienti, è possibile registrare un nuovo paziente o modificare le informazioni relative a un paziente esistente.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonghoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Il nome del caso verrà compilato automaticamente, ma è comunque possibile modificarlo.
4. Cliccare su "Registra & scansiona" per completare la registrazione del caso e procedere

alla scansione.

- **Registra:** si verrà reindirizzati alla pagina principale. Utile quando si registrano più casi.
- **Registra & scansiona:** consente di passare alla scheda Modulo per registrare le informazioni del modulo per il caso.

Creare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sul pulsante "Nuovo caso" nell'angolo in alto a destra.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Inserire o selezionare il nome della clinica.
3. Inserire il nome del paziente e il nome del caso. Il nome del caso verrà compilato automaticamente, ma è comunque possibile modificarlo.
4. Inserire la data di consegna prevista considerando la data di completamento del lavoro.
5. Dopo aver registrato il caso, si verrà reindirizzati alla pagina principale.

Modificare i casi

Modificare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sull'icona "Modifica" accanto al nome del caso.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Cliccare sull'icona "Cerca" per modificare il nome del paziente. Si tenga presente che non è possibile modificarlo direttamente; invece, è possibile cercare il nome di un paziente con cui si desidera sostituire quello attuale e modificare le informazioni relative al paziente dall'elenco.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhooon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Visualizzare il nome del paziente con cui si desidera sostituire quello attuale.
4. Cliccare sul pulsante "Nuovo paziente" per creare un nuovo paziente.
5. Utilizzare il pulsante "Modifica" per modificare le informazioni registrate relative al paziente.
6. Cliccare su "Applica" per completare il processo.

Modificare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Modifica" accanto al nome del caso.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Cliccare su "Applica" una volta completata la modifica.

iNota

Non è possibile modificare le informazioni dei casi ricevuti tramite l'ordine in In Box.

Clonare i casi

Clonare un caso in Case Box (Clinica)

1. Cliccare sull'icona "Clona" in alto.



2. Verrà chiesto che genere di informazioni si desidera clonare nel nuovo caso.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Scegliere se replicare solo le informazioni del modulo o tutti i dati.
4. Una volta completata la clonazione, verrà creato un caso denominato "[Nome del caso] – Clone".

Clonare un caso in Work Box (Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Clona" in alto.



2. Duplicare tutti i dati per creare un nuovo caso.
3. Una volta completata la clonazione, verrà creato un caso denominato "[Nome del caso] – Clone".


Eliminare i casi

Eliminare un caso (Clinica e Laboratorio)

1. Cliccare sull'icona "Elimina".



2. Cliccare su "OK" per eliminare il caso.

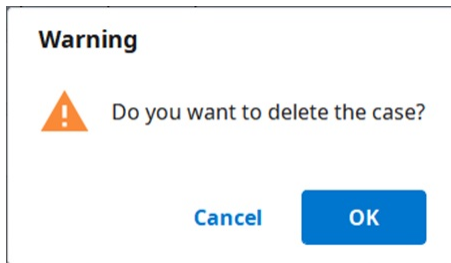

3. I casi eliminati vengono spostati in Trash Box e possono essere ripristinati, se necessario.

Informazioni del modulo

È possibile inserire le informazioni del modulo in base al programma collegato e al tipo di trattamento.

Le informazioni inserite verranno utilizzate come informazioni di base per operare su programmi di scansione o CAD e per ordinare.

Registrare le informazioni del modulo in Case Box

Inserire nella scheda Modulo

1. Scegliere se inserire le informazioni sul trattamento per denti o per arcata.
2. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Se le informazioni sono state inserite in modo errato, tornare indietro e selezionarle nuovamente.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco degli ordini.
3. Cliccare su "Salva" per salvare la registrazione.

Inserire nella scheda CAD

1. Selezionare una delle seguenti opzioni che definiranno la strategia di scansione:
Denti/Multi-die flessibile/Multi-die.
2. Selezionare il numero di dente/l'arcata/il numero dello stampo.
3. Stabilire le impostazioni per le opzioni dettagliate e le operazioni CAD.
4. Cliccare su "OK" per salvare le impostazioni.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco degli ordini.
5. Cliccare su "Salva" per salvare la registrazione

Registrare le informazioni del modulo in Work Box

Inserire nella scheda Modulo

1. Selezionare il programma di scansione che si desidera utilizzare.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni che definiranno la strategia di scansione:
Denti/Multi-die flessibile/Multi-die.
3. I metodi potrebbero differire a seconda del programma di scansione selezionato.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Denti	☐	☐
Arcata	☐	☐
Multi-die flessibile	☒	☐
Multi-die	☒	☐

4. Selezionare i numeri di denti, arcate o stampi per il processo di scansione.
5. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Se le informazioni sono state inserite in modo errato, tornare indietro e selezionarle nuovamente.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco.
6. Cliccare su "Salva" per salvare la registrazione.

Inserire nella scheda CAD

1. Selezionare una delle seguenti opzioni che definiranno la strategia di scansione:
Denti/Multi-die flessibile/Multi-die.
2. Selezionare il numero di dente/l'arcata/il numero dello stampo.
3. Stabilire le impostazioni per le opzioni dettagliate e le operazioni CAD.
4. Cliccare su "OK" per salvare le impostazioni.
 - Le informazioni selezionate verranno registrate automaticamente nell'elenco.
5. Cliccare su "Salva".

Collegare i denti nel ponte

È possibile collegare più denti in un ponte quando viene applicato lo stesso materiale a più denti adiacenti. Fare clic sull'icona del ponte accanto ai denti selezionati per collegarli o distaccarli.



Impostare le opzioni di scansione

A seconda del programma con cui si sta lavorando, sono disponibili diverse opzioni di scansione.

Le opzioni di scansione selezionate vengono trasferite a ciascun programma di scansione.

Medit Scan for Labs

Opzioni generali

	Denti adiacenti	Consente di contrassegnare i denti preparati e adiacenti e trasferisce queste informazioni al programma di scansione.
	Antagonista	Contrassegna automaticamente l'antagonista e trasmette questa informazione al programma di scansione.

	Articolatore	Mostra le opzioni per selezionare l'articolatore nel programma di scansione.
	Indicatore di movimento	Consente di utilizzare la strategia di scansione Movimento mascellare nel programma di scansione.

Opzioni per denti

	Scan body	Consente di impostare la strategia per la scansione dello scan body nel programma di scansione.
	Scansione preoperatoria	Consente di impostare la strategia per la scansione di un modello preoperatorio nel programma di scansione.
	Scansione della ceratura	Consente di impostare la strategia per la scansione delle cerature nel programma di scansione.

Aggiungere ai preferiti

È possibile selezionare rapidamente un prodotto registrandolo come preferito.

L'elenco dei preferiti registrati è gestito come modello e può essere condiviso tramite le funzioni di esportazione e importazione.

Aggiungere ai preferiti

1. Selezionare il numero del dente.
2. Selezionare Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità.
 - Tipo – Metodo – Materiale – Tonalità possono essere registrati come preferiti anche se non sono tutti selezionati.
3. Cliccare sull'icona a forma di stella.

4. Nell'elenco di ricerca dei preferiti sarà presente una combinazione dei parametri selezionati, escluso il numero del dente.

Gestire i modelli dei preferiti

È possibile registrare, gestire e condividere diversi tipi di modelli.

Aggiungi	Consente di aggiungere un nuovo modello.
Rinomina	Consente di rinominare il modello corrente.

Elimina	Consente di eliminare il modello corrente.
Esporta	Consente di esportare il modello corrente in un file.
Importa	Consente di importare un file di modello.

Lavorare su scansione/CAD

Processo di scansione

In base alle informazioni inserite, procedere con la scansione.

1. Inserire/salvare le informazioni sul trattamento e selezionare le opzioni di scansione necessarie.
2. Cliccare sul pulsante "Scansiona" nell'angolo in alto a destra della finestra.

Processo CAD

Medit Link è integrato con exocad.

CAD	Registrare le informazioni sul trattamento	Confermare le informazioni sul trattamento	Esecuzione CAD diretta	Reimportazione risultati CAD in Medit Link
exocad	☐	☐	☐	☐

1. In Impostazioni > Imposta programma collegato, è possibile collegare il programma CAD scelto dall'elenco.
2. Inserire/salvare le informazioni sull'attività e le opzioni di progettazione nella scheda CAD.
3. Cliccare su "CAD" nell'angolo in alto a destra della finestra.
4. Viene eseguito il programma CAD collegato e i dati vengono inviati automaticamente.
5. Salvare i risultati dopo aver eseguito CAD.

iNota

Medit Link per Mac non supporta la funzione di collegamento con CAD.

Ottenere i file dei risultati

Esportare i file dei risultati di scansione

Oltre a condividere i risultati con i collaboratori tramite gli ordini, Medit Link consente di archiviare i risultati nel formato di file desiderato attraverso la funzione di esportazione.


Esporta i file in	Specifica il percorso in cui si desidera archiviare i risultati.
Nome della cartella	Il sistema crea una nuova cartella e vi archivia tutti i risultati. Il nome predefinito della cartella è stabilito dalla regola di denominazione. Tuttavia, è possibile modificare direttamente il nome della cartella. È possibile definire la regola di denominazione tramite Impostazioni > Opzioni di esportazione > Regole per il nome della cartella.
Nome del file	Consente di impostare il nome del file per il risultato. Il nome predefinito del file è stabilito dalla regola di denominazione. Tuttavia, è possibile modificare direttamente il nome del file. È possibile definire la regola di denominazione tramite Impostazioni > Opzioni di esportazione > Regole per il nome del file.
Tipologia CAD	Consente di selezionare il programma CAD che si desidera utilizzare per il programma di progettazione. Medit Link regolerà i file in base a questa selezione, consentendo di procedere con la progettazione senza ulteriori allineamenti degli assi.
Formato mesh	Specifica il formato del file mesh.
Formato immagine	Specifica il formato dei file di immagine esportati.

Comprimi i file	Comprime tutti i risultati in un singolo file.
Combina mesh individuale	Combina il risultato della mascella o della mandibola con il singolo dente. Utile quando non è possibile importare più file in un programma.
Esporta tutte le relazioni occlusali	Quando vengono generati più risultati occlusali dall'app di scansione, è possibile esportare tutti i risultati occlusali contemporaneamente.
Salva informazioni sul caso come PDF	Salva le informazioni sul caso come pdf con il risultato.


Esportare i file selezionati

Medit Link fornisce una funzione di esportazione dal menu espanso nel visualizzatore di file. Utilizzando questa funzione, è possibile esportare facilmente i file selezionati.

1. Cliccare sull'icona "Menu" accanto al gruppo di dati o a un'entità nell'albero dei dati del visualizzatore di file.
2. Successivamente, cliccare su "Esporta".

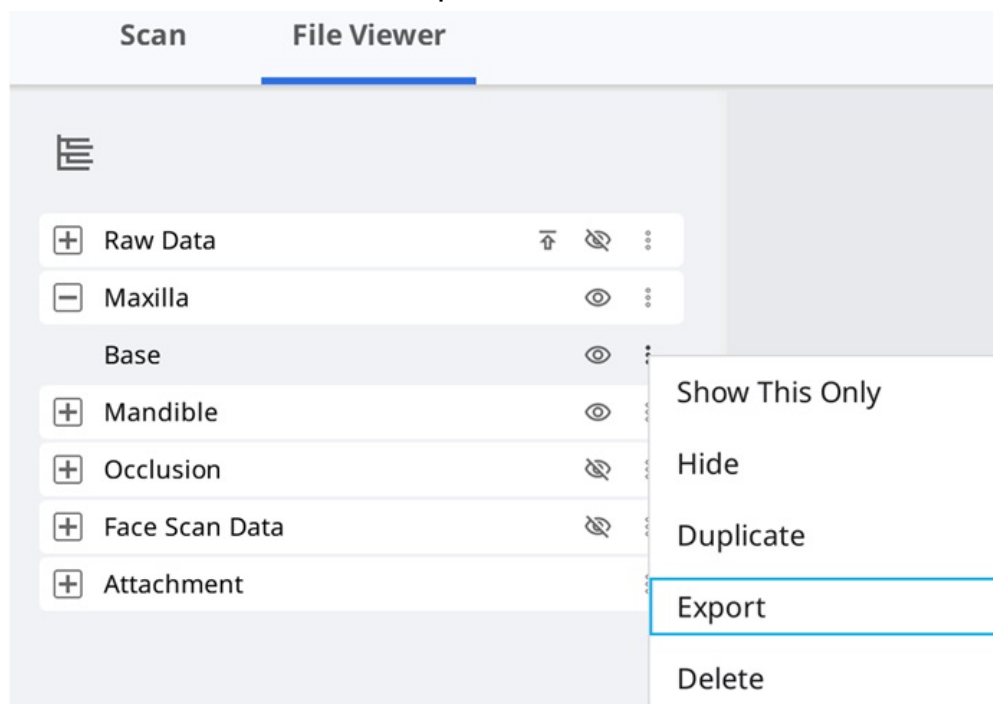

3. La finestra di dialogo di esportazione mostrerà solo i file selezionati che si desidera esportare.

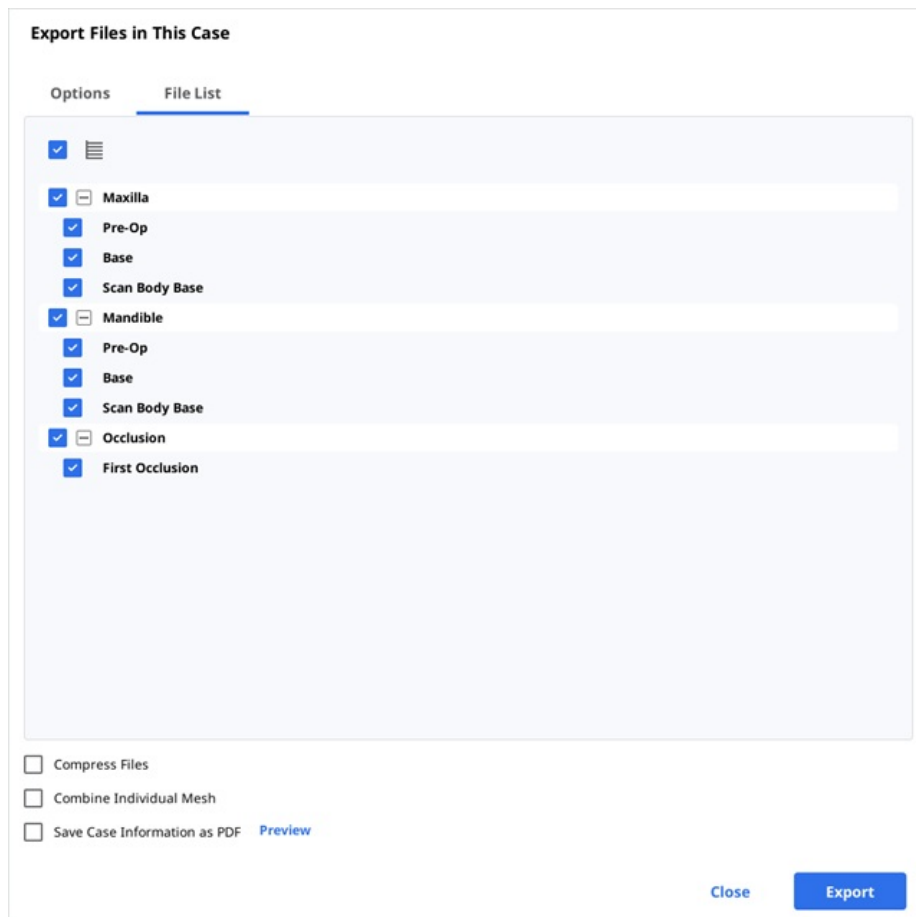

4. Infine, cliccare su "Esporta".

Esportare la linea di margine


Medit Scan for Clinics fornisce una funzione per creare la linea di margine e Medit Link può trasferirla al programma CAD.

Esportare la linea di margine come colore

In generale, Medit Link converte la linea di margine come colore ed esporta il risultato insieme alla mascella o alla mandibola. È possibile creare la linea di margine nel loro cad facendo riferimento alle informazioni sul colore.

Esempio:

Mascella

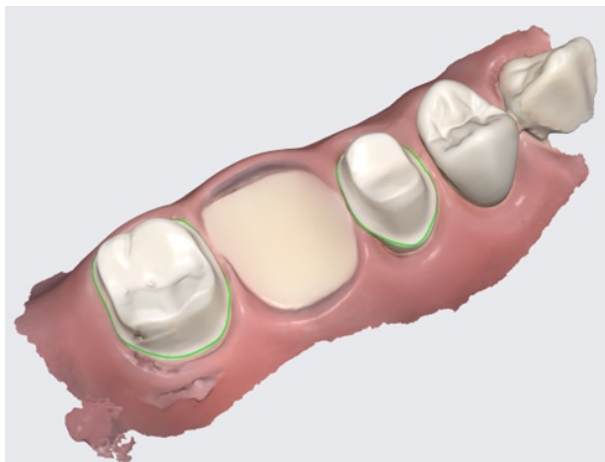

Risultato con la linea di margine come colore

iNota

Questa funzione è disponibile per i formati che includono informazioni sui colori, come meditMesh, OBJ e PLY. La linea di margine non viene convertita in STL.

iNota

Tipologia CAD > 3shape non supporta questa funzione.


Esportare la linea di margine come file

Nel caso di Exocad, Medit Link esporta la linea di margine come "~margin.xyz", che può essere importata direttamente in exocad.

È possibile utilizzare questo file in exocad senza lavorazioni aggiuntive.

Esempio:

Mascella	Linea di margine
----------	------------------

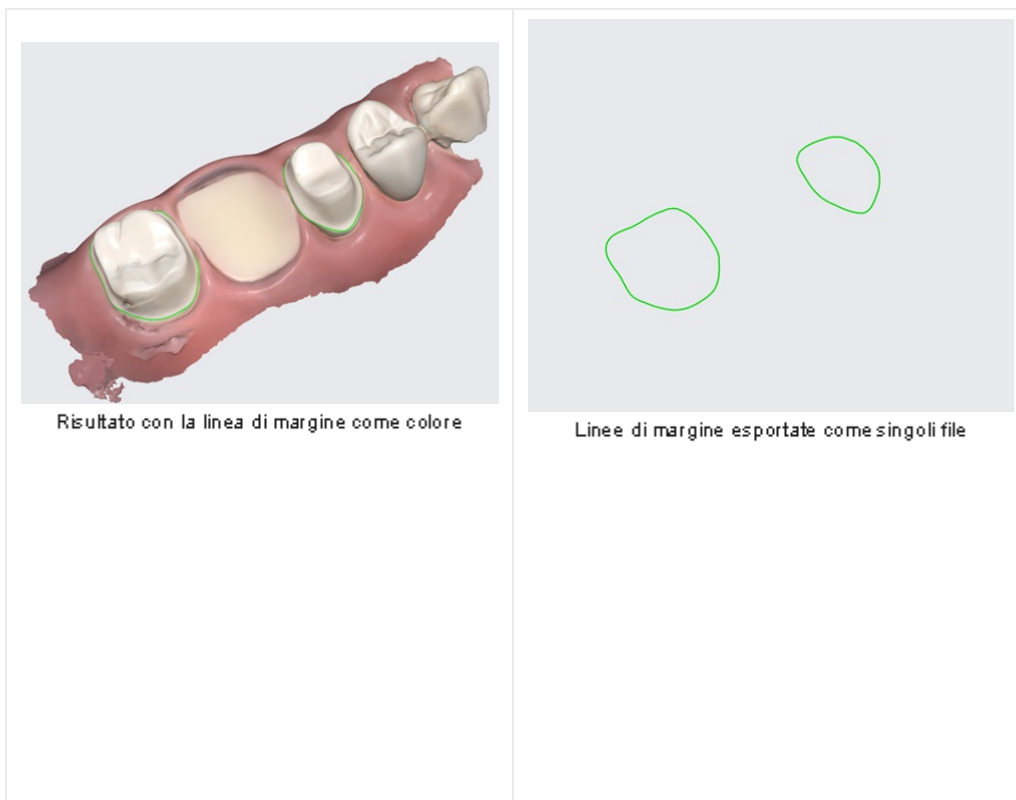

Esportare l'elenco dei casi come CSV

Medit Link fornisce la funzione per esportare l'elenco dei casi in formato CSV.

È possibile esportare l'elenco dei casi con le informazioni di base e gestire facilmente i casi.

La funzione "Esporta in CSV" è disponibile nei seguenti menu dell'applicazione Medit Link.

- In Box
- Work Box

Come esportare l'elenco dei casi

1. Aprire In Box o Work Box.
2. Selezionare i casi che si desidera esportare.

MEDIT Link 3.0.0

Wanhoon Choi

In Box

✓ All Pending Accepted Case Completed

Cancel Selection Delete Items Selected: 5

2018-01-01~2022-09-29 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐	Pending	test's Case	test	2022-09-29 오전 8:13	2022-10-01 오후 10:30	Wanhoonchai-Clinic	10413603	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-24 오후 10:30	Wanhoonchai-Clinic	10374886	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-24 오후 10:30	Wanhoonchai-Clinic	10374864	
☐	Accepted	test's Case	test	2022-09-13 오후 2:43	2022-09-15 오후 10:30	Wanhoonchai-Clinic	10314293	
☒	Pending	test's Case	test	2022-09-05 오전 7:31	2022-09-07 오후 10:30	Wanhoonchai-Clinic	10268220	
☐	Case Completed	Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 오전 8:51	2021-07-08 오후 8:50	Wanhoonchai-Clinic	8579990	500 KRW
☒	Case Completed	test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 오후 4:10	2021-09-07 오후 4:10	Wanhoonchai-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒	Case Completed	test's Case memo	test	2022-04-08 오후 11:...	2022-04-15 오후 7:45	Wanhoonchai-Clinic	9569817	

Export to CSV

3. Cliccare sul pulsante "Menu espanso" in alto e selezionare l'opzione "Esporta in CSV".



Selezionando "Autorizza il download" e condividendo il caso, tutti gli utenti che si collegano al link condiviso potranno scaricare i file.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ **Grant Download Permission** *Premium Feature*

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

Nel Web Viewer, è possibile trovare l'icona "Download" in alto a destra.

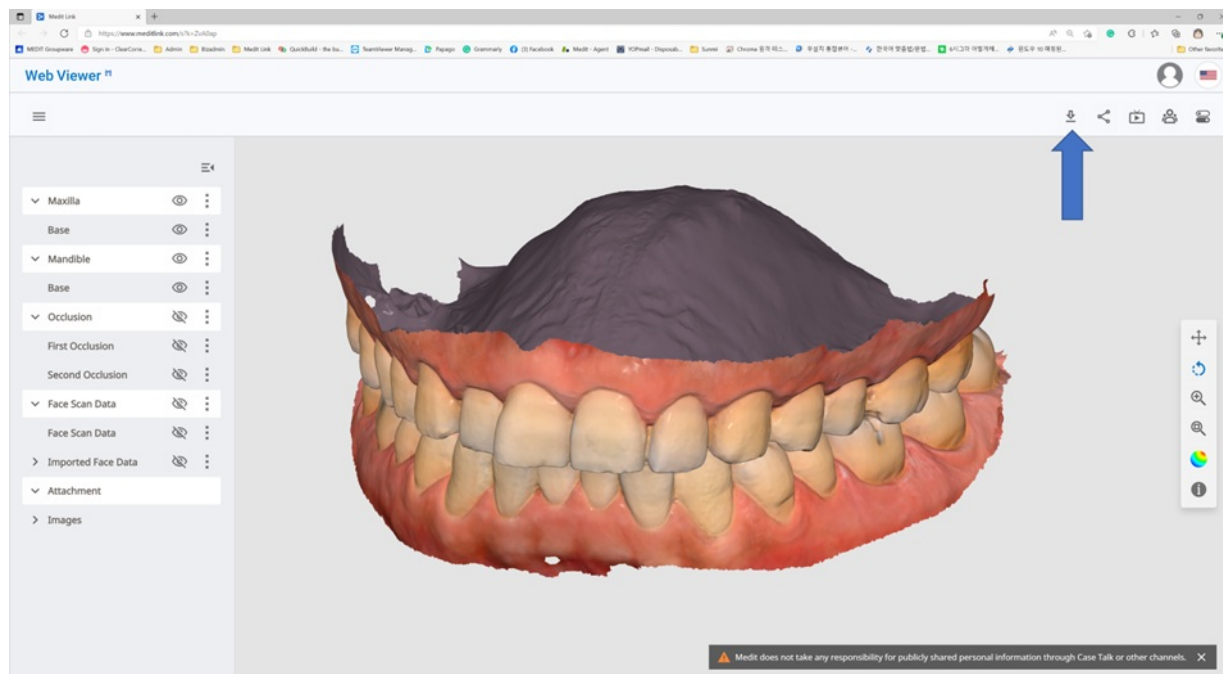

Come eseguire il download

1. Cliccare su "Download".



2. Selezionare il formato mesh dalla finestra di dialogo di download.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Successivamente, cliccare su "OK".

Ordinare/gestire gli ordini

È possibile ordinare facilmente un caso con i dati acquisiti dai programmi collegati e i dati allegati dall'utente.

Ordinare i casi

È possibile effettuare un ordine per i propri collaboratori in Case Box.

1. Cliccare sul pulsante "Ordina".
2. Controllare le informazioni necessarie per l'ordine.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Selezionare un collaboratore.
4. Consultare le informazioni sul prodotto dalla scheda Elenco degli ordini.
 - È possibile scegliere se condividere il nome del paziente.
5. Controllare i file da ordinare dalla scheda Elenco dei file.
6. Inserire la data di consegna desiderata.
 - Il valore predefinito è impostato su 7 giorni dopo la data dell'ordine.
7. È possibile aggiungere promemoria e tag al collaboratore per delineare dettagli specifici.
8. Quando vengono generati più risultati occlusali dall'app di scansione, è possibile inviarli tutti contemporaneamente selezionando "Ordina tutte le relazioni occlusali".
9. Procedere con l'ordine.
 - **Salta pagamento:** consente di procedere con l'ordine senza utilizzare il sistema di pagamento fornito da Medit Link. Disponibile quando si ordina da un collaboratore con lo stato "Contracted".
 - **Paga:** consente di utilizzare il sistema di pagamento fornito da Medit Link per procedere con l'ordine. Disponibile quando si ordina da un collaboratore sotto contratto.
 - **OK:** procediamo con l'ordine senza alcuna condizione riguardante il prezzo del prodotto. Disponibile quando si ordina da un collaboratore con lo stato

"Collaborazione".

Nota

I seguenti servizi non sono disponibili per Medit Link China.

- Salta pagamento
- Paga

Confermare l'ordine (In Box)

- Accettare l'ordine dopo averlo ricevuto.
- Gli ordini accettati verranno inoltrati a Work Box.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Confirm Order' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator at the bottom right.

Annullare l'ordine (Order Box)

- È possibile annullare un ordine prima che il collaboratore lo accetti.
- I casi annullati possono essere nuovamente ordinati.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and two buttons: 'Cancel' and 'Confirm Order'. The 'Cancel' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator at the bottom right.

Rifiutare l'ordine (In Box)

- È possibile rifiutare un ordine ricevuto.
- I casi rifiutati possono essere nuovamente ordinati.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Reject' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator at the bottom right.

Controllare i casi ordinati

È possibile controllare i dettagli del caso ordinato da Order Box nell'account clinica. È inoltre possibile controllare il caso ricevuto da In Box nell'account laboratorio.

The screenshot shows the Medit Link 3.1.0 interface. The top bar includes the Medit Link logo, version 3.1.0, and user information 'wonhoonchoi_Lab3'. The main header shows 'test's Case / wonhoonchoi Beta' with 'Reject' and 'Confirm Order' buttons. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, displaying order details: Order ID (5718975), Patient Name (test), Partner Name (wonhoonchoi Beta), Scan Date, Order Date (2020-11-10 06:18), Requested Delivery Date (2020-11-24 06:15), and Expected Delivery Date (2020-11-24 06:15). There are also fields for Memo and Tag. On the right, the 'Order List' tab is active, showing a table of ordered items:

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

At the bottom right, the 'Total' is listed as USD 4.00.

Informazioni sull'ordine	Le informazioni che possono essere incluse nell'ordine sono le seguenti: ID dell'ordine/nome del paziente/nome dell'account/data di scansione/data dell'ordine/data di consegna/termine di consegna/promemoria. È possibile consultare i dettagli del prodotto ordinato e le informazioni sulla consegna.
Elenco degli ordini	L'elenco degli ordini mostra i dettagli del prodotto ordinato.
Spedizione	Consente di inserire/controllare le informazioni di spedizione.

Inserire le informazioni di spedizione (In Box)

Consente di inserire le informazioni di spedizione per il caso completato e avviare la spedizione.

1. Cliccare sulla scheda "Spedizione".
2. Inserire le informazioni di spedizione e cliccare su "Registra".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

[Cancel](#) [Register](#)

3. Le informazioni inserite vengono inviate al collaboratore.

Gestire la data di consegna

È possibile impostare la data di consegna prevista quando si effettua un ordine. Questa informazione verrà inoltrata al collaboratore.

Impostare la data di consegna richiesta (account Clinica)

- Quando si ordina da Case Box, è possibile inserire la data di consegna richiesta.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Il valore predefinito è 7 giorni dopo la data dell'ordine.
- Inserire la data e l'ora in cui si desidera ricevere i prodotti e procedere con l'ordine.
- È possibile impostare facilmente l'ora utilizzando il cursore.

Impostare la data di consegna prevista (account Clinica)

- È possibile inserire la data di consegna prevista per il caso ordinato da In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Controllare la data di consegna richiesta con il collaboratore e riprogrammare utilizzando il pulsante "Modifica".
2. Inserire la data di consegna prevista considerando il giorno lavorativo effettivo. Se necessario, è anche possibile lasciare un commento.
3. Cliccare su "Applica".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

🕒 11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. La data di consegna prevista e il promemoria verranno inoltrati insieme all'ordine.
 - È possibile visualizzare la data e i promemoria in Order Box.
 - È inoltre possibile modificare la data di consegna prevista. Le modifiche verranno inoltrate al collaboratore.
5. L'utente può controllare la cronologia del caso utilizzando il pulsante "Cronologia".



Completare i casi

Completare (Work Box/In Box)


Una volta terminate tutte le attività, cliccare su "Done" per completare il caso.

Completare un caso dai dettagli del caso

È possibile trovare il pulsante "Menu" sulla destra del pulsante Apri.



Completare il lavoro cliccando sull'icona "Menu" e selezionando "Done".

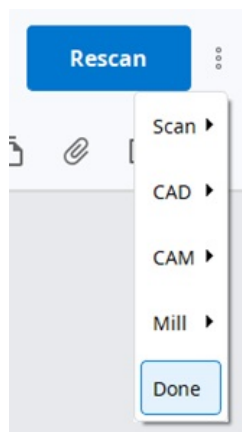


Completare i casi multipli dall'elenco dei casi

Selezionando i casi da Work Box, il pulsante del menu espanso viene mostrato nella parte superiore dell'elenco.



Completare più casi come illustrato di seguito:

1. Andare su Work Box.
2. Selezionare tutti i casi da completare.

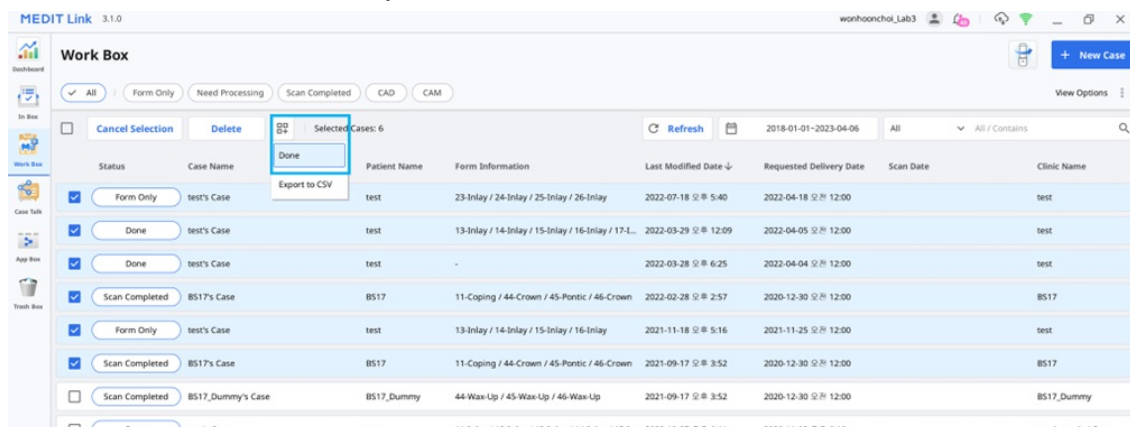

3. Cliccare sul pulsante "Menu espanso".




4. Selezionare "Done" dall'elenco.

Completare (Case Box/Order Box)

Una volta che il laboratorio ha completato il caso, la clinica deve confermare il caso per completare l'intera procedura di ordinazione.

Se il laboratorio completa il lavoro, la clinica può trovare la funzione "Conferma la consegna" in Order Box.


Cliccandoci sopra, l'intera procedura di ordinazione viene completata e lo stato del caso passa a "Case Completed".

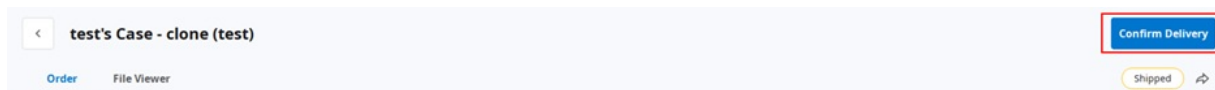

Completare un caso non ordinato in Case Box

È possibile completare i casi che non sono stati ordinati al laboratorio da Case Box.

1. Andare su Case Box.
2. Selezionare il caso che si desidera completare.

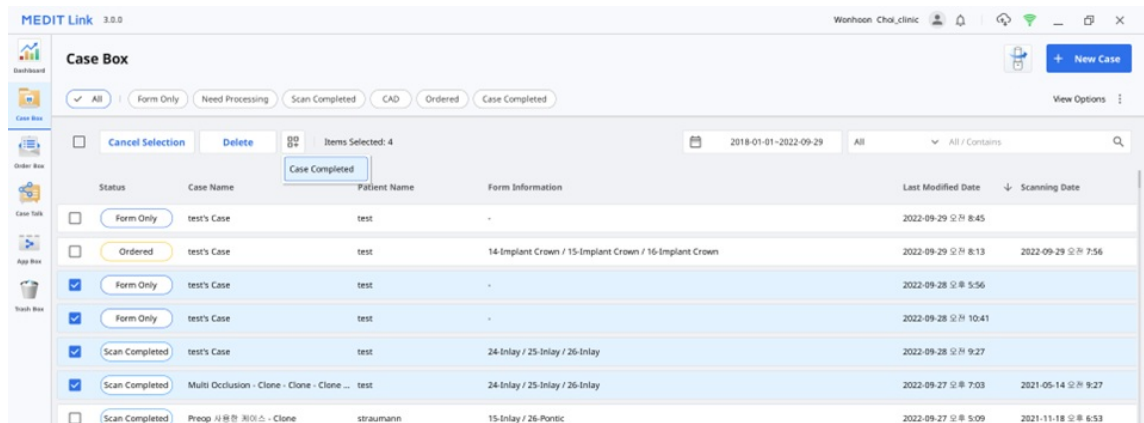

3. Cliccare sul pulsante "Menu espanso".




4. Scegliere "Case Completed".

Comunicare utilizzando i tag

È possibile aggiungere ulteriori informazioni relative al caso utilizzando i tag e inviarle ai collaboratori.

Aggiungere tag quando si crea un nuovo caso

È possibile inserire tag quando si crea un nuovo caso o si modifica le informazioni del caso.

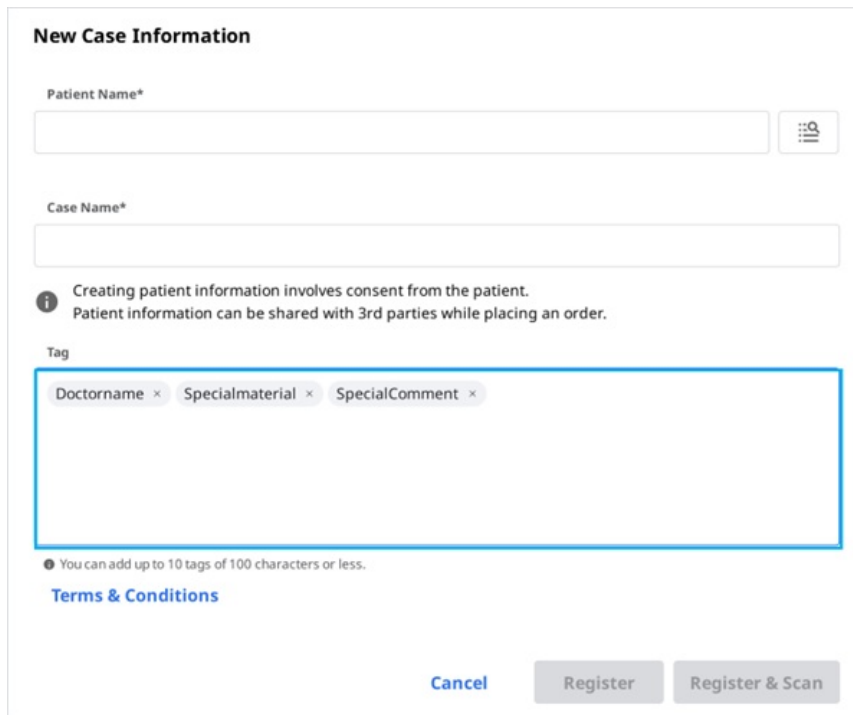

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag


Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

È inoltre possibile cercare e selezionare facilmente i tag utilizzati in precedenza.

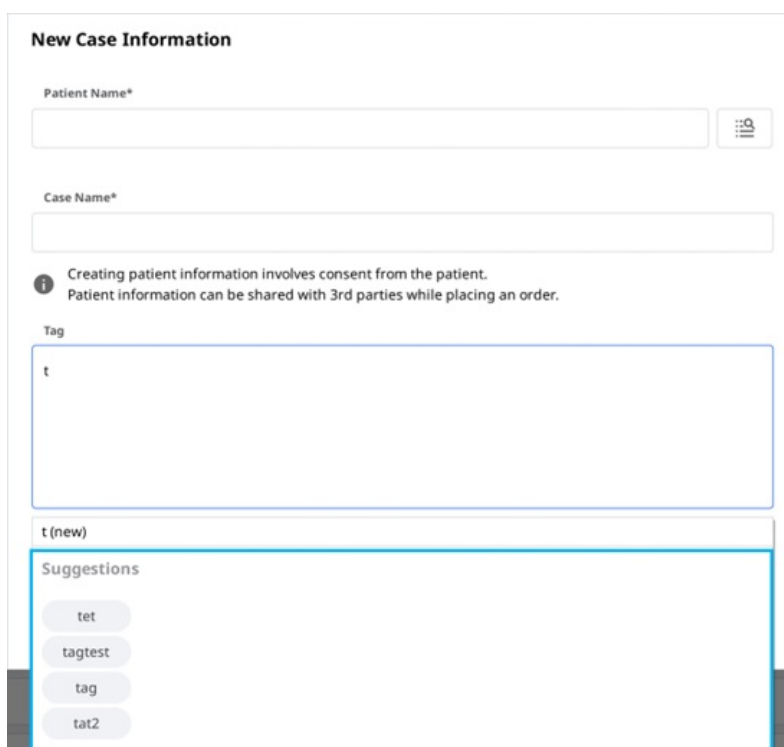

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Aggiungere tag quando si ordina

È possibile visualizzare e modificare i tag nella finestra di dialogo Ordine durante il processo di ordinazione.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Controllare i tag in Dettagli del caso

MEDIT Link 3.1.0

mandibular movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Scan Completed

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

