

USER GUIDE

Medit Link

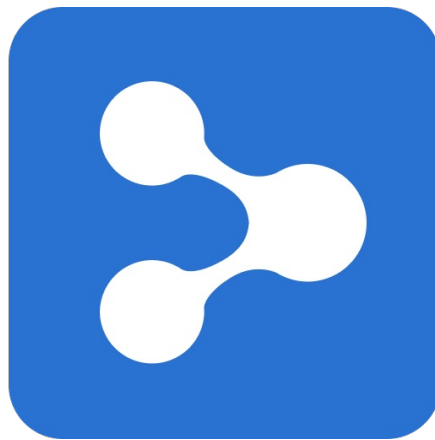


Table of Contents

Medit Link

はじめに	6
Medit Link	6
サービス概要	6
クラウドサービス	7
注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム	7

Medit Link > インストール

システム要件	8
Windows用のシステム要件	8
macOS用システム要件	8
Webサービス用システム要件	8
推奨ブラウザ	8
モバイル機器用最小要件	8
Windowsへのインストール	9
MacOSへのインストール	11
Medit LinkはMedit Scan for Clinicsのパッケージとしてインストールされます。	11

Medit Link > 開始する

登録&サインイン	15
Medit Link Webサイト	15
登録	15
ログインおよびウェルカムページ	17

Medit Link > Medit Link Web

概要	19
Dashboard	20
Dashboardの概要	20
Medit Insights	20
Medit Insightsを購読する	21
Medit Insightsの購読を解除する	22
Case Box/Work Box	23
ケースフィルタリング	23
ステータス別フィルタリング	23
期間別フィルタリング	23
検索別フィルタリング	24
ケースの詳細	24
Order Box/In Box	26
注文詳細	26
Order Box/In Box中のタブ	26
Case Talk	27
Case Talkの作成	27
共有権限タイプと共有オプションの設定	28
Case Talk詳細	30
Webビューワー	30
注釈	31
コメント	32
リアルタイムでの画面共有	33
データツリー	33
データツリーコントロール	33
3D模型のコントロール	34

パートナー	35
パートナーを検索する	35
マイ契約リスト	35
パートナーの招待	36
メンバーシップ	37
メンバーシップ	37
マイプラン	37
クラウドストレージ	38
サブスクリプション登録	39
登録を解除する	40
請求情報	42
支払い方法の追加方法	42
支払い方法の変更方法	44
引き換え	45
引換コードの登録	45
引換コードの有効化	46
支払い	47
. 支払い詳細 (歯科医院、& 技工所アカウント)	47
. 支払いアカウント情報 (技工所アカウントのみ)	47
マイ情報	48
マイアカウント	48
マイ歯科医院/技工所 (管理者アカウントのみ)	48
マイ・スキャナー	48
マイ価格表 (技工所管理者アカウントのみ)	49
その他のメニュー	50
お知らせ & 更新情報	50
Medit 情報	50
Medit Link アプリのダウンロード	50

Medit Link > Medit Linkアプリ

概要	52
Box概要	52
タイトルバー	54
ユーザー情報	54
通知	54
ケース同期マネージャー	55
アップロード	56
ダウンロード	56
ネットワークステータス	57
メニュー	58
Dashborad	58
Case Box/Work Box	58
Case Box/Work Box中のタブ	59
Case Box/Work Box中のタブ	59
Order Box/In Box	60
Order Box/In Box中のタブ	60
Case Talk	61
App Box	61
Trash Box	62
設定	62
患者管理	62
新規患者の追加	63
患者の削除	63
患者の結合	64
お知らせ & 更新情報	65
Medit Link ホームページへ移動	65

Medit情報	65
設定	66
一般設定	66
ストレージ管理	67
期間の設定	67
ローカルストレージ	67
クラウドストレージ	68
接続プログラムを設定する	68
エクスポートオプション	69
ケース変換ツール	70
ケース変換ツールの使用方法	70
プロキシオプション	71
Medit Linkについて	72
ユーザーガイド	72
ファイルビューアー	73
データツリー	73
模型コントロールツール	73
3D模型のコントロール	73
2D画像コントロール	74
機能ツール	74
画像撮影とメモ	75
矯正撮影	75
歯牙充填	76
トリミング	76
咬合整列の最適化	79
下顎運動	80
ファイルビューアーの複数の咬合データの管理	81
複数の結果の管理方法	81
表示オプション	83
ステータスフィルター	83
表の項目	84
表示タイプ	85
ギャラリー表示	86
リスト表示	87
グループ化	87
並び替え	88
フィルタリングおよび検索	90
日付別フィルタリング	90
詳細検索機能	90

Medit Link > ワークフロー

ケースの作成／編集／複製／削除	92
ケースの作成	92
Case Box(歯科医院)でケースの作成	92
Work Box(技工所)でケースの作成	93
ケースの編集	93
Case Box(歯科医院)でケースの編集	93
Work Box(技工所)でケースの編集	94
ケースの複製	94
Case Box(歯科医院)でケースの複製	94
Work Box(技工所)でケースの複製	95
ケースの削除	95
ケースの削除(歯科医院および技工所)	95
フォーム情報	96
Case Boxのフォーム情報の登録	96
フォームタブの入力	96

CADタブの入力	96
Work Boxのフォーム情報の登録	96
フォームタブの入力	96
CADタブの入力	96
歯をブリッジにつなぐ	97
スキャンオプションの設定	97
Medit Scan for Labs	97
一般オプション	97
歯別のオプション	97
お気に入り追加	98
お気に入り追加	98
お気に入りテンプレートの管理	98
スキャン/CADでの作業	99
スキャン処理	99
CAD処理	99
結果ファイルの取得	100
スキャン結果ファイルのエクスポート	100
選択したファイルのエクスポート	101
マージンラインのエクスポート	102
色としてマージンラインをエクスポート	102
ファイルとしてマージンラインをエクスポート	103
CSVとしてケースリストをエクスポート	104
ケースリストのエクスポート方法	104
Medit Linkウェブからファイルをダウンロード	105
Case Box／Work Box	105
Web Viewer	105
ダウンロード方法	106
ケースの注文/管理	108
接続しているプログラムで取得したデータおよびユーザーが添付したデータで簡単にケースを注文できます。	108
ケースの注文	108
注文の確認 (In Box)	109
注文のキャンセル (Order Box)	109
注文の拒否 (In Box)	109
注文済みケースの確認	109
配送情報の入力 (In Box)	110
納品日の管理	110
納品希望日の設定 (歯科医院アカウント)	110
ケースの完了	112
完了 (Work Box／In Box)	112
ケースの詳細からケースを完了する	112
ケースリストから複数のケースを完了する	112
完了 (Case Box／Order Box)	113
Case Boxの注文のないケースの完了	113
タグを使用してやり取りをする	115
新規ケースの作成時にタグを追加	115
注文時にタグを追加	116
ケースの詳細でタグを確認	116

はじめに

Medit Link

Medit Linkは歯科医院と技工所の各ワークフローを最適化できるように、両者間のやり取りを円滑にするよう設計されているコラボレーションツールです。

各アカウントのタイプや権限に基づき、差別化された機能を提供しています。プログラムは口腔内および模型のスキャナーでのスキャン、ケースの注文、補綴物の設計・製作のワークフローを管理するためのユーザーが使いやすいユーザーインターフェースを提供しています。

Medit Linkは、ウェブサービスおよびコンピューターアプリケーションで構成されています。

サービス概要

		Web	アプリ
		• アカウントの登録と管理 • 検索 • パートナーの検索と管理 • 共有リンクを使ってWeb Viewer経由でケースを共有 • アプリから作成されたケースにアクセス • 注文管理	• フォーム情報の入力 • スキャン • 注文の発行/受領および支払い • CADにリンク • 患者管理
歯科医院	管理者	パートナーおよび歯科医院／技工所を検索・管理、支払い情報の管理、ケースの共有 - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - パートナー - メンバーシップ - 支払い - マイ情報	フォーム情報の入力、スキャン、CADでリンク、発注、支払い、患者の管理。 - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - 患者管理
	メンバー	- Case Box - Case Talk - マイ情報	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
技工所	管理者	パートナーおよび歯科医院／技工所を検索・管理、支払い情報の管理、ケースの共有 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - パートナー - メンバーシップ - 支払い - マイ情報	フォーム情報の入力、スキャン、CADでリンク、注文の受領／管理。 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	メンバー	- Work Box - Case Talk - マイ情報	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

■注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 支払い

クラウドサービス

Medit Linkは、AWS (Amazon Web Services)を介してデータベースとファイルの自動アップロード/ダウンロードをサポートしています。

クラウドに保存されたデータは、歯科医院／技工所の複数のユーザーのコンピューターに自動的に同期されていますので、いつでもどのコンピューターからでも同じデータにアクセスできます。クラウドベースのバックアップとリカバリーですべてのデータを安全に維持します。予期せぬコンピュータの停止によるデータ喪失の場合でも、データを安全に保護できます。

クラウドサービスによりパートナー提携している歯科医院および技工所はメールしたり、手動でスキャン転送することなく、迅速にデータを共有できます。患者情報を含むすべてのデータは、安全に暗号化、保存、転送されます。MeditはHIPAAやGDPRのような医療関連法令や規制に準拠しています。

注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム

Medit Linkは、独自の注文・支払いシステムを提供します。

- Medit Linkでは、歯科医院と技工所間で契約を作成し、迅速かつ簡単にデータを共有できます。
- 注文状況を確認および管理できます。

クレジットカードで支払いができるシステムでは、Stripe (www.stripe.com)とI'mPort (<http://www.iampart.kr>)といったオンライン支払いプラットフォームでの支払いが利用でき、支払いサービスが容易かつ便利になります。

■注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 支払い

システム要件

■注意事項

スキャナーを使用してスキャンソフトウェアを使用する場合には、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのシステム要件を参照してください。

Windows用のシステム要件

	ノートパソコン&デスクトップ
CPU	Intel Core i5 2.6GHz以降
RAM	16GB以上
グラフィック	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) 以上/または同等のAMD 動画カード
OS	Windows 8 64ビット以上 (32ビットでは使用不可)

macOS用システム要件

	Mac
プロセッサ	M1チップ (8コア、7コア GPU、16コアニューラルエンジン)
RAM	16GB以上
OS	Monterey 12

Webサービス用システム要件

推奨ブラウザ

	ブラウザ
PC	Chrome、Firefox、Safari、Edge (Chromium)
Android	Chrome、Firefox
iOS	Safari、Chrome、Firefox


モバイル機器用最小要件

タイプ	Android	iOS
デバイス	Galaxy S7以降	iPhone 7以降
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB以上	2GB以上
AP	Snapdragon 710より上	A10 Fusion


Windowsへのインストール

Medit Linkは、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのスキャン取得プログラムと一緒にパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_LinkSetup.exeを実行します。
2. インストールする言語を選択します。
3. Medit Linkをインストールするフォルダを選択します。ライセンスの利用規約を読み、同意し「インストール」をクリックしてください。

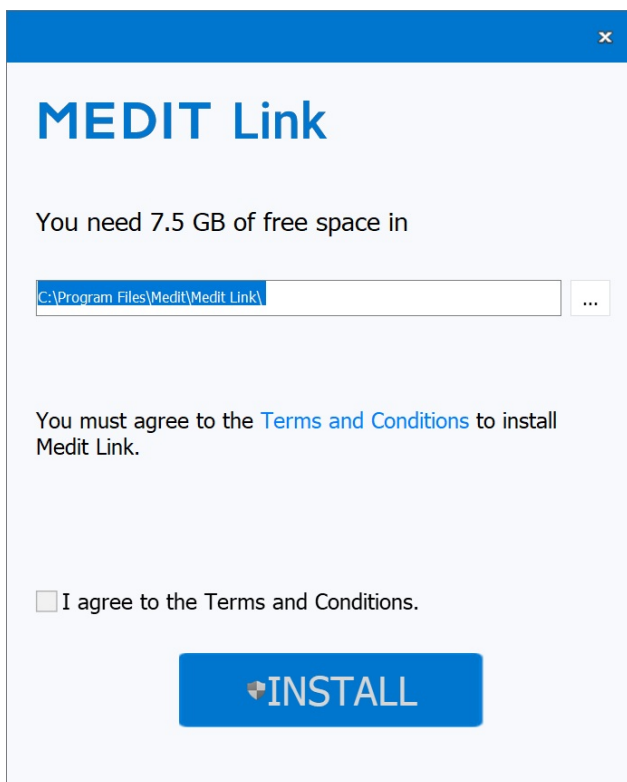

4. 次の手順に進む前に、スキャナーケーブルがPCに接続されていないことを確認してください。スキャナーがPCに接続されている場合には、インストールは継続できません。
5. プログラムは自動的にインストールされます。しばらく時間がかかる場合があります。インストールが完了するまでPCの電源を落としたり、コードを抜いたりしないでください。

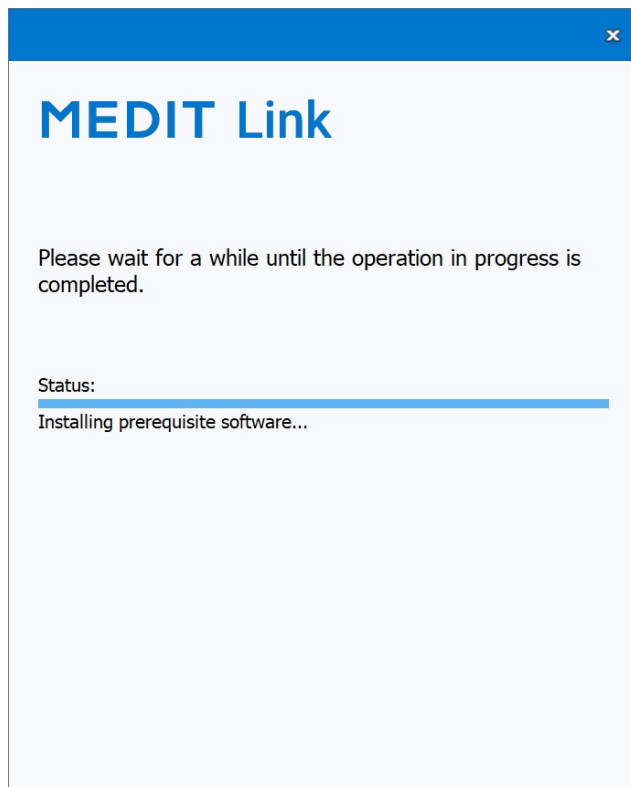

6. インストールが完了したらPCを再起動してください。スキャナーがない場合には、PCを再起動することなくそのまま継続できます。

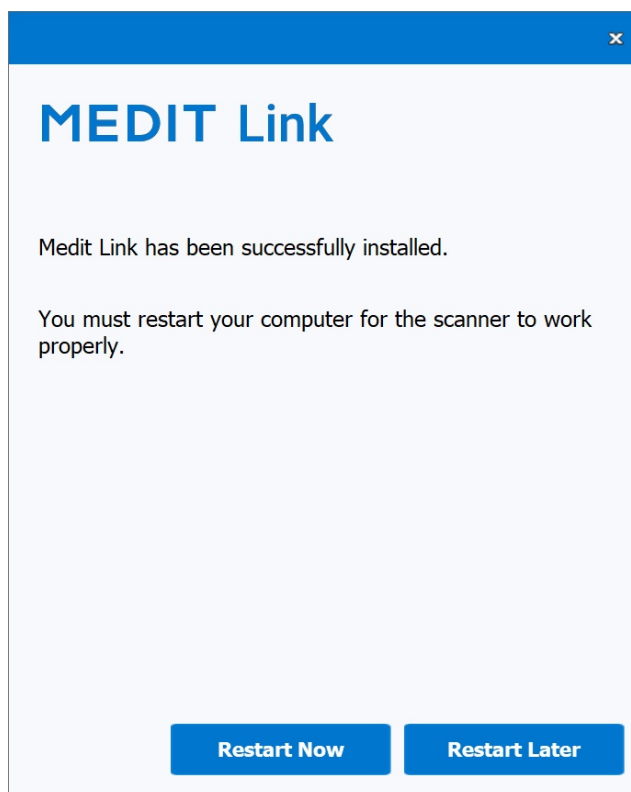


■注意事項

インストール完了後にPCを再起動しない場合、スキャナーは正常に機能しない場合があります。


MacOSへのインストール

Medit LinkはMedit Scan for Clinicsのパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_Link_x.x.x.pkgを実行し、「続ける」をクリックします。

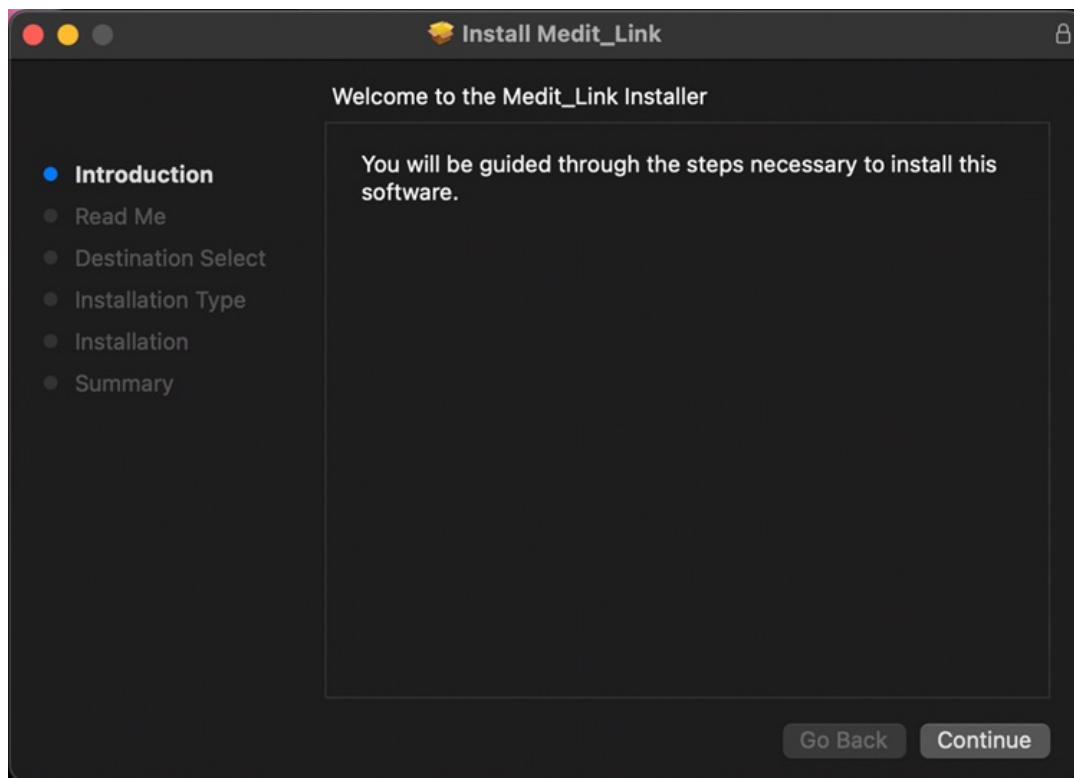


2. エンドユーザーライセンス契約を読み、「続ける」をクリックします。

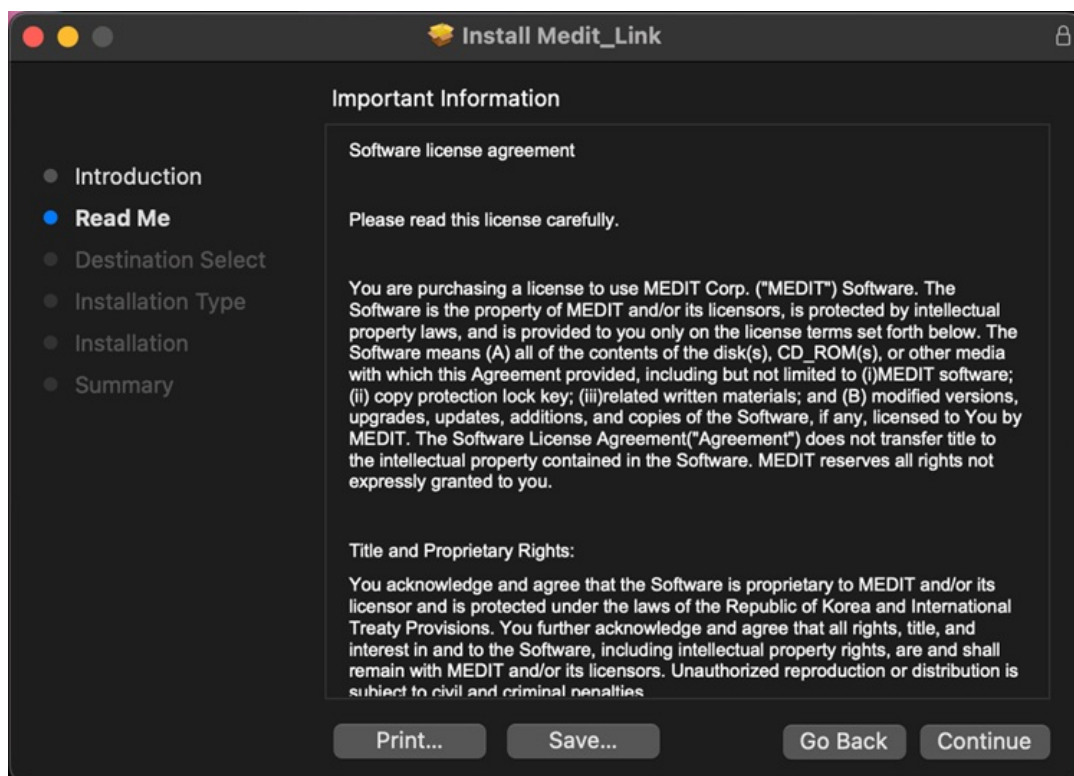

3. インストールするディスクを選択し、「続ける」をクリックします。

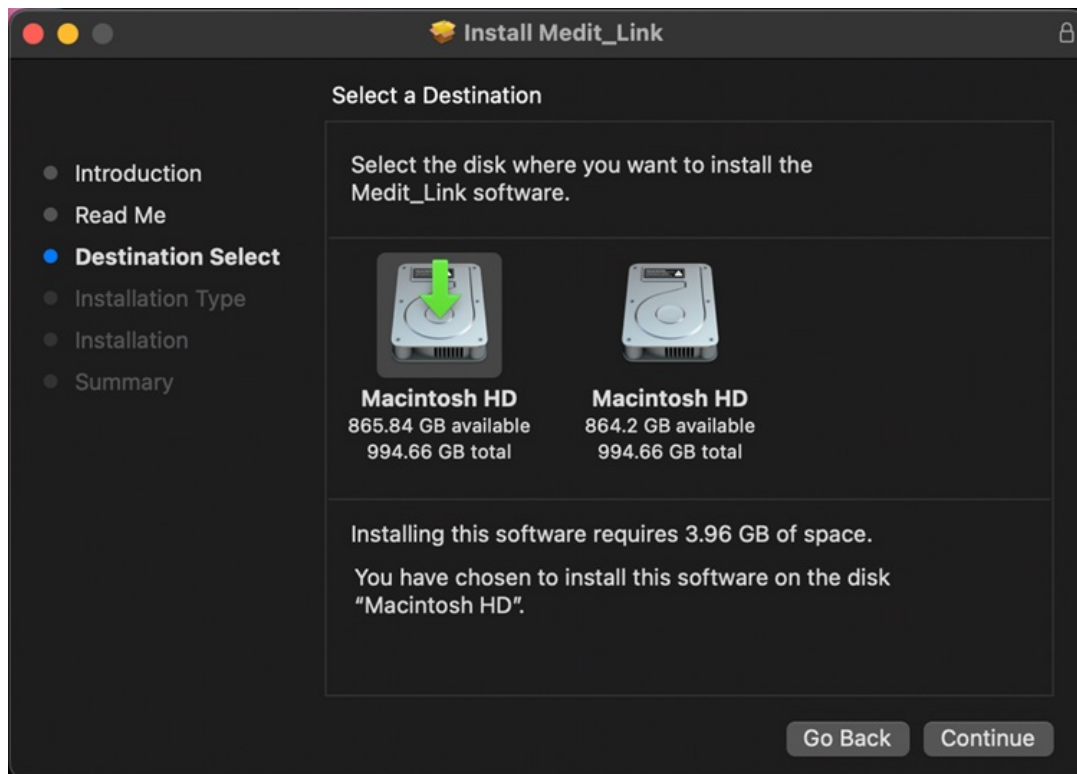


4. 「インストール場所の変更」をクリックし、インストール場所を変更します。

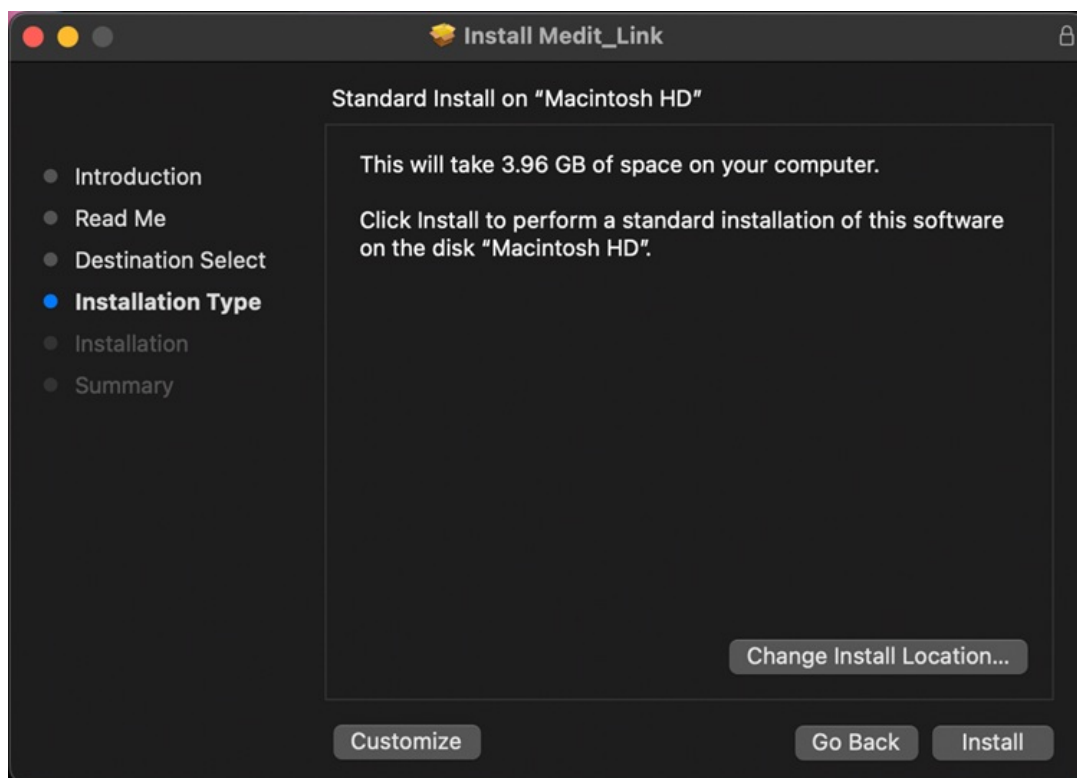


5. 「インストール」をクリックし、要求された場合にはインストールを許可するためにMac用パスワードを入力します。



6. インストールが完了するまで待ちます。

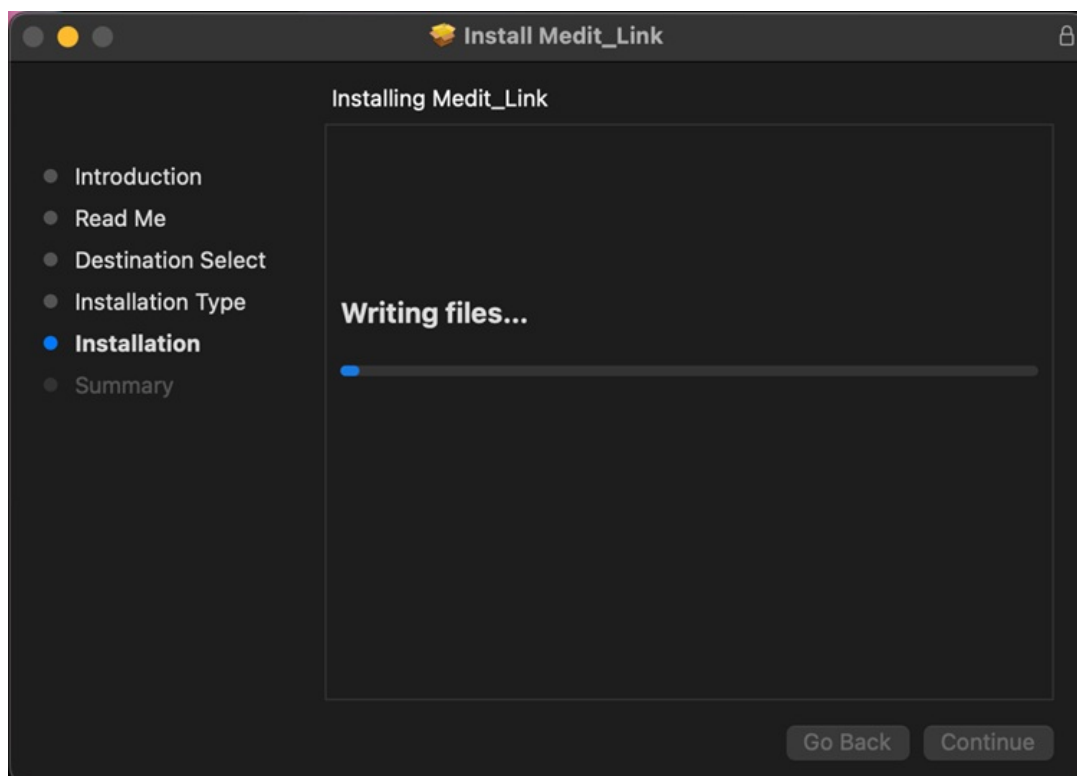


7. 「閉じる」をクリックし、インストール画面を終了します。

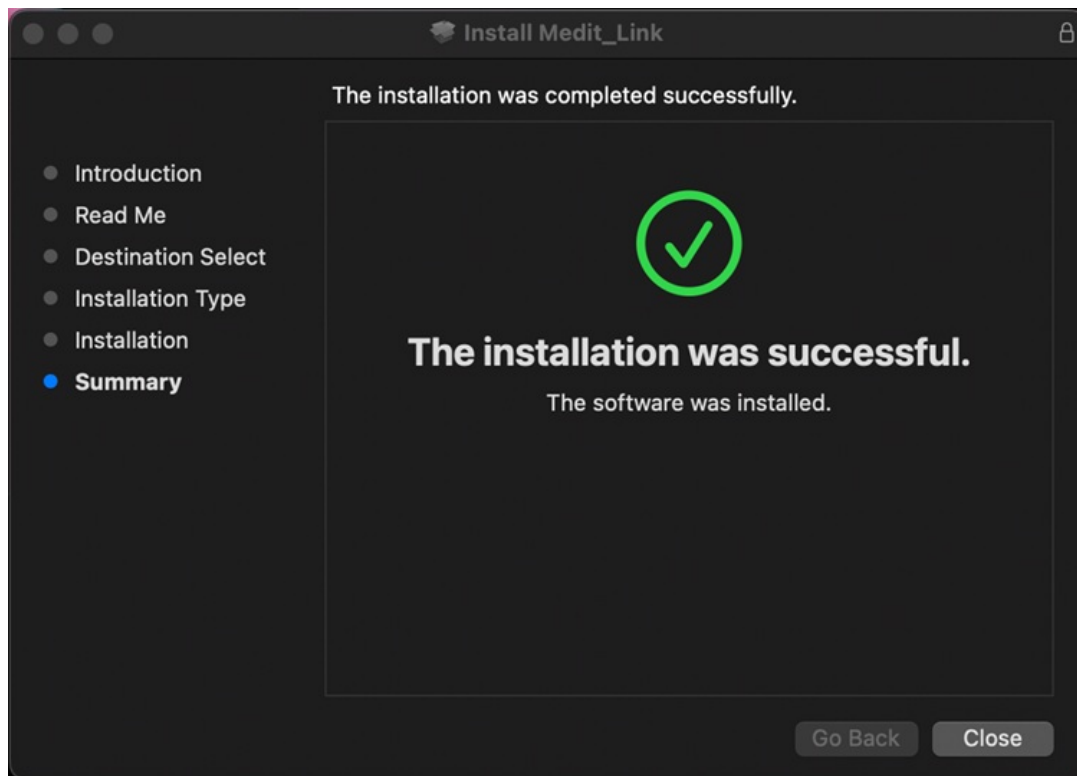

登録 & サインイン

Medit Link Webサイト

www.meditlink.comからMedit Linkサービスに登録します。

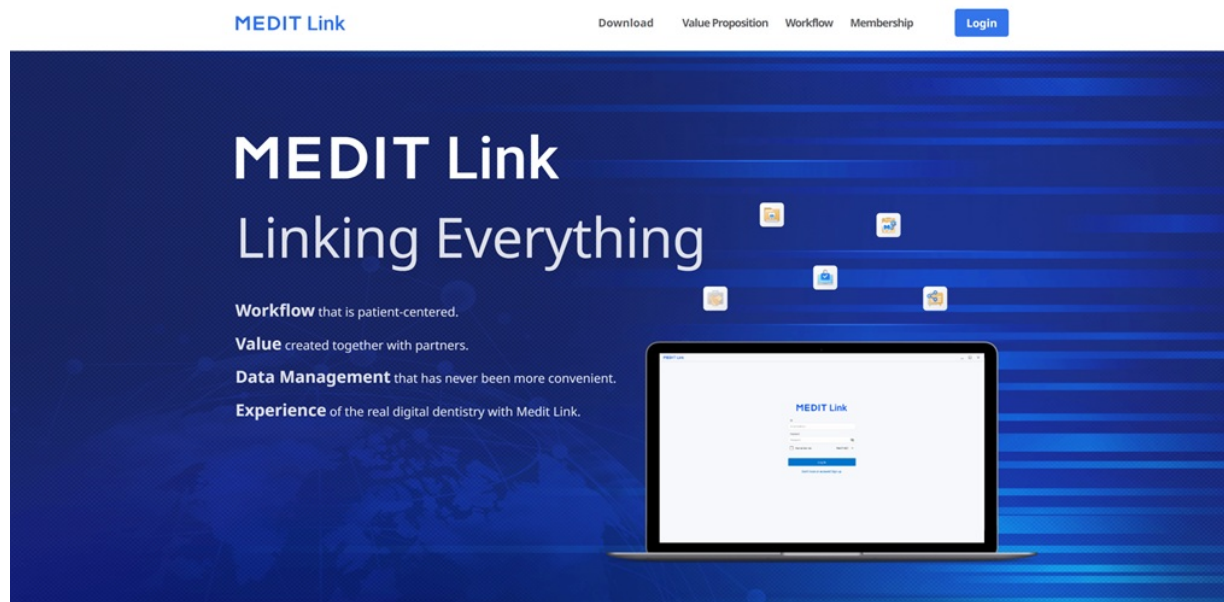

■注意事項

www.meditlink.cnからMedit Link Chinaに登録します。

登録

Medit Linkサービスを使用するためには、アカウントに登録する必要があります。歯科医院または技工所としてアカウントを作成後に、Medit Linkで提供されている機能を利用できます。

以下の4つのアカウントタイプのうち一つを選択し、メンバーシップに登録し、アカウントタイプに応じて、フルまたは限定的な機能や権限のサービスを使用できます。

- 歯科医院 - 管理者
- 歯科医院 - メンバー
- 技工所 - 管理者
- 技工所 - メンバー

管理者は通常、組織の代表者であり、Medit Linkのすべての機能やサービスにフルにアクセスできます。一方で、メンバーアカウントは限定的なアクセスになります。

メンバーシップに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. 「まだアカウントをお持ちでない場合 登録してください。」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. 説明内容を読んだ後に、希望するアカウントタイプの「登録」ボタンをクリックします。



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All MEDIT Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All MEDIT Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use MEDIT Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use MEDIT Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.


- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. 歯科医院または技工所名を入力し、アカウントタイプに従い、以下のように進めてください。
 - 管理者として登録する場合、入力名が利用できるかどうかを「利用状況の確認」をクリックして確認します。
 - メンバーとして登録する場合は、「検索」をクリックします。管理者は他のメンバーが登録する前に組織を登録する必要があります。
4. 登録フォームの残りを記入し、「登録」をクリックします。確認メールが届きます。
5. 登録手続きを完了するには、確認メールにあるリンクでメールアドレスを認証します。

ログインおよびウェルカムページ

1. ログインページにメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

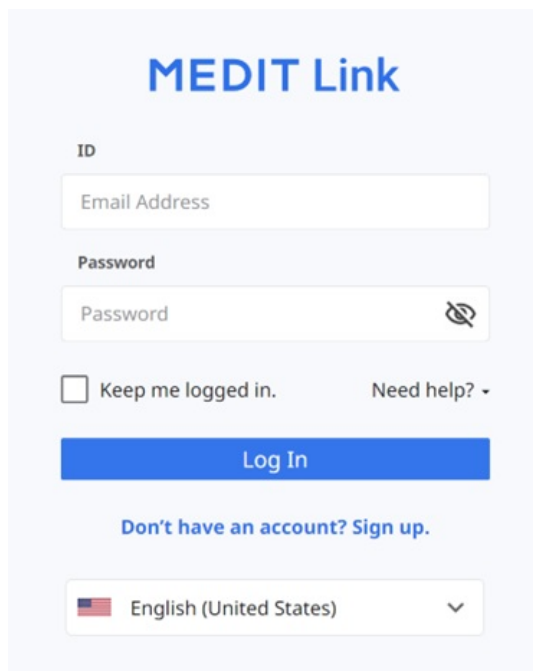


The login form for Medit Link features a light blue header with the logo. Below it, there are two input fields: 'ID' (labeled 'Email Address') and 'Password'. A 'Keep me logged in.' checkbox and a 'Need help?' link are positioned below the password field. A prominent blue 'Log In' button is centered below these elements. At the bottom, there is a link for 'Don't have an account? Sign up.' and a language selection dropdown menu currently set to 'English (United States)'.

2. 組織情報が入力されていない場合、以下のダイアログウィンドウが表示されます。

注意事項

Medit Linkサービスを使用するためには、管理者アカウントを使用して組織に関する情報を入力する必要があります。

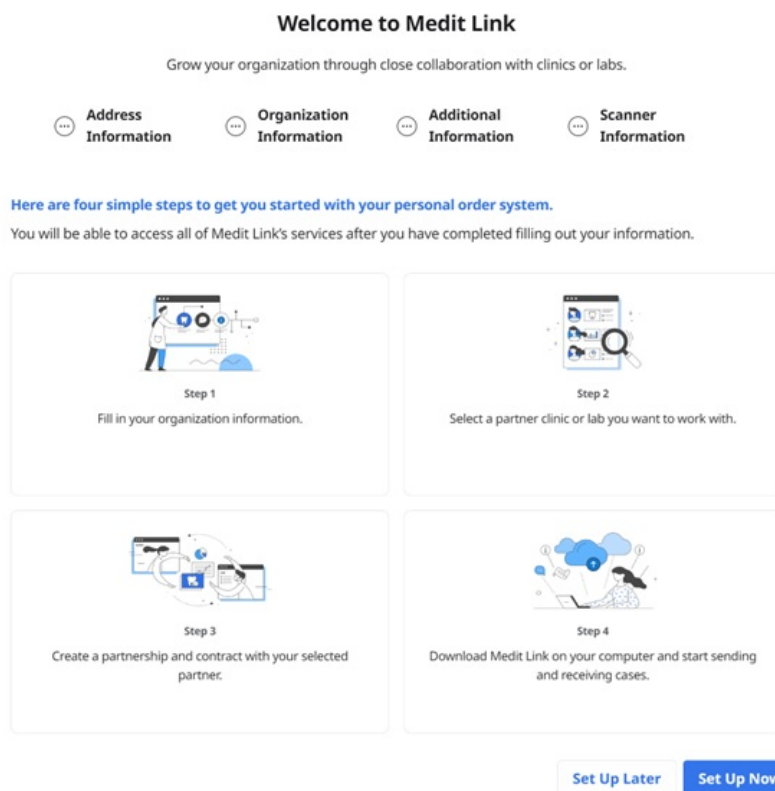

The 'Welcome to Medit Link' page provides a clear setup guide. It begins with the title and a subtitle: 'Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.' Below this, four key areas of information are listed: Address, Organization, Additional, and Scanner. A four-step process is then outlined to get started with the personal order system. Each step includes an icon and a brief description: Step 1 (Fill in organization info), Step 2 (Select partner clinic/lab), Step 3 (Create partnership/contract), and Step 4 (Download app and start cases). The page concludes with two buttons: 'Set Up Later' and 'Set Up Now'.

Welcome to Medit Link

Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.

Address Information Organization Information Additional Information Scanner Information

Here are four simple steps to get you started with your personal order system.

You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.

Step 1
Fill in your organization information.

Step 2
Select a partner clinic or lab you want to work with.

Step 3
Create a partnership and contract with your selected partner.

Step 4
Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases.

Set Up Later Set Up Now

3. 「今すぐ設定」をクリックし、住所情報、組織情報、追加情報、工程ごとのスキャナー情報を入力します。

登録中にマーケティング情報を受信することに同意した場合は、メーカーから製品とサービスに関する役に立つ情報を受信できるようになります。

4. ウェルカムページで入力された情報は、いつでもMedit Link Webのマイ情報>マイ歯科医院/技工所で編集できます。

概要

Medit Link

https://stage-www.meditlink.com/casebox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세게... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열거됨?

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. wonhoon.choi

Case Box

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

View Options

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Dashboardの概要

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートとして確認できます。

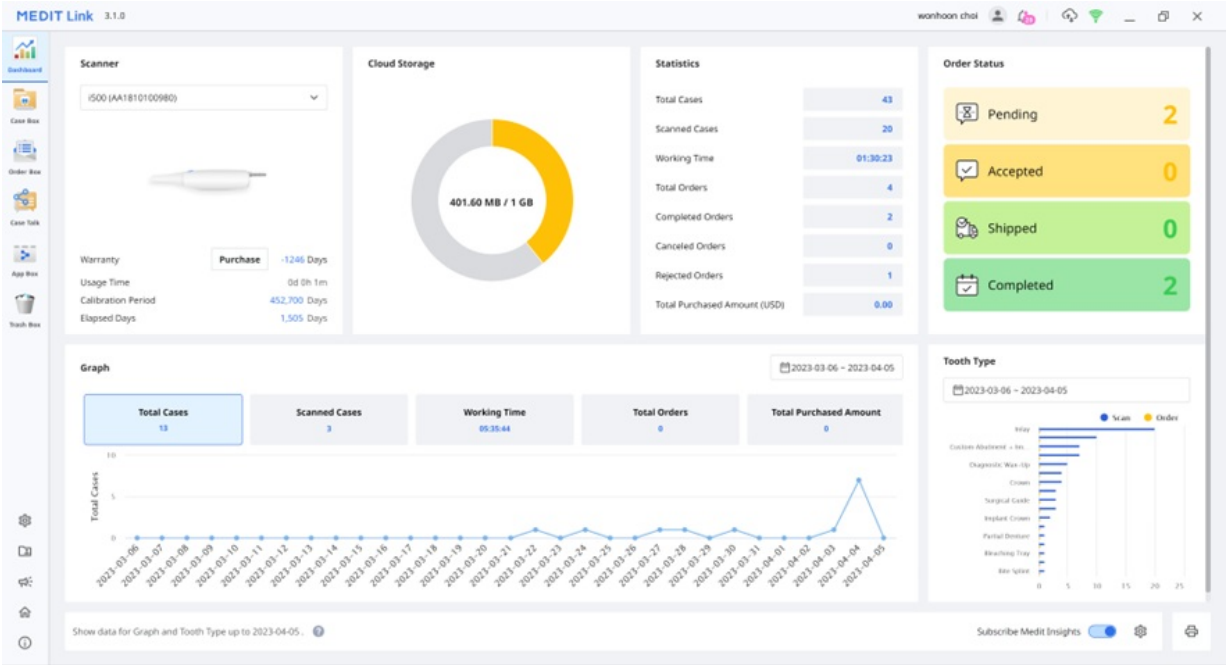

Dashboardのグラフと図は、Medit Linkで完了した作業全体の統計データを表示しています。

スキャナー	保証、スキャナー使用時間、キャリブレーションの間隔、キャリブレーション経過時間を含む有効なスキャナーに関する情報を提供します。
クラウドストレージ	クラウドと使用中の総容量を表示します。
統計データ	作業ステータスに基づくケースに関する統計データを提供します。
注文ステータス	注文ステータスに基づくケースの統計データを提供します。
グラフ	期間別の作業情報グラフです。
歯の種類	治療情報ごとのスキャンおよび注文の数量に関する統計データを提供します。


Medit Insights

Medit Insightsは、レポートサービスを提供し、使用統計データの分析をしやすくします。

❗注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- Medit Insights

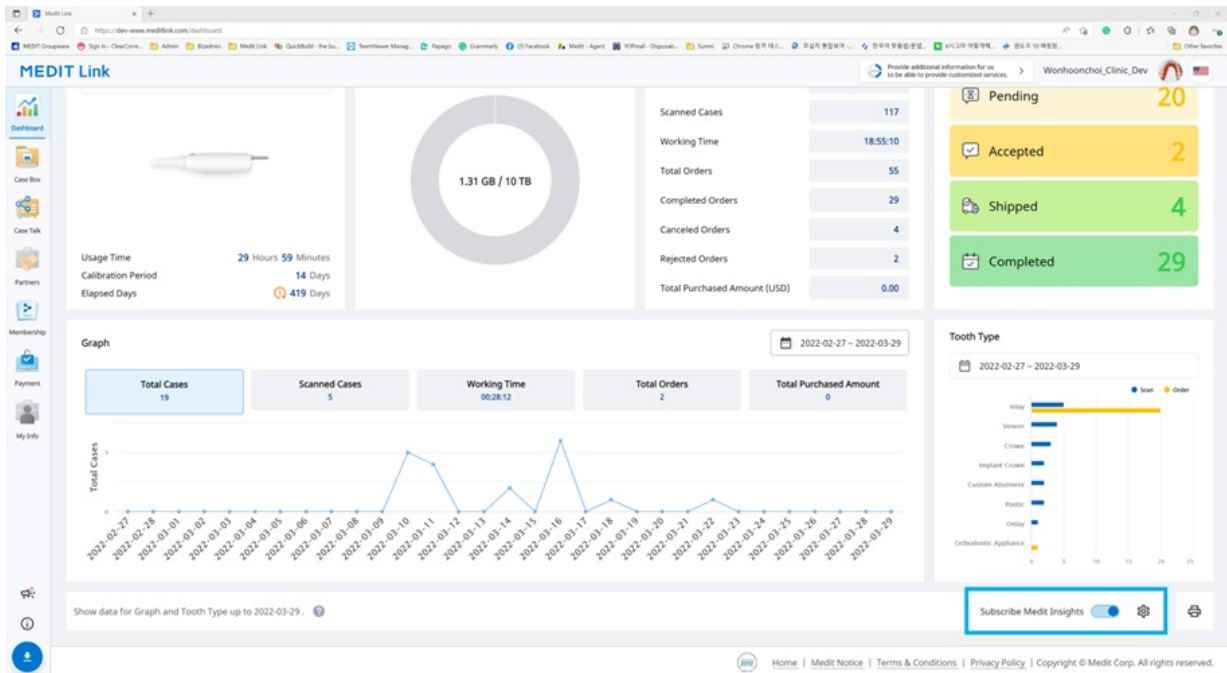

Medit Insightsを購読する

毎月2日にレポートのメールを送信します。追加での登録手続きは必要ありません。「Medit Insightsを定期購読」を有効にするだけです。

Medit Linkアカウントで使用したメールアドレスを使用しない場合、Medit Insightsを受信するために別のメールアドレスを設定できます。

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

毎月2日に以下のような統計データ付きのメールが届きます。

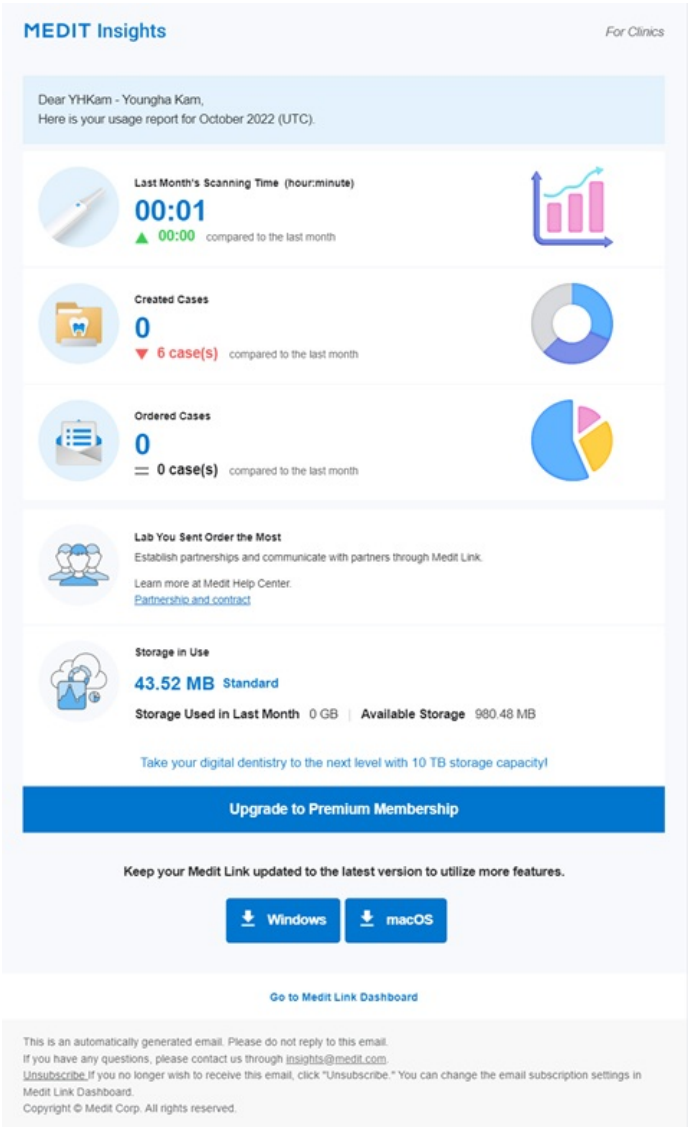


バナー	Meditはこちらに使用に関するヒントや情報を提供します。 * バナーを表示させたくない場合は、マイ情報>マイアカウントにあるマーケティング及び販売プロモーションに同意のボックスのチェックを外してください。
統計データ情報	スキャン時間、作成されたケース、最も発注した技工所等の統計データ情報が表示されます。
Medit Linkダウンロード	ボタンをクリックすると、Medit Linkダウンロードリンクが提供されます。
Dashboard	すべての統計データ情報は、Dashboard 情報に基づいています。Dashboardでより詳細な情報を確認できます。

Medit Insightsの購読を解除する

Dashboardの「Medit Insightsの購読」を無効にするか、受信したメールで「購読解除」をクリックします。

Case Box/Work Box


Case Box(歯科医院)またはWork Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションでユーザーが作成したすべてのケースを表示します。別のプログラムをインストールせずにウェブブラウザからファイルを確認できます。

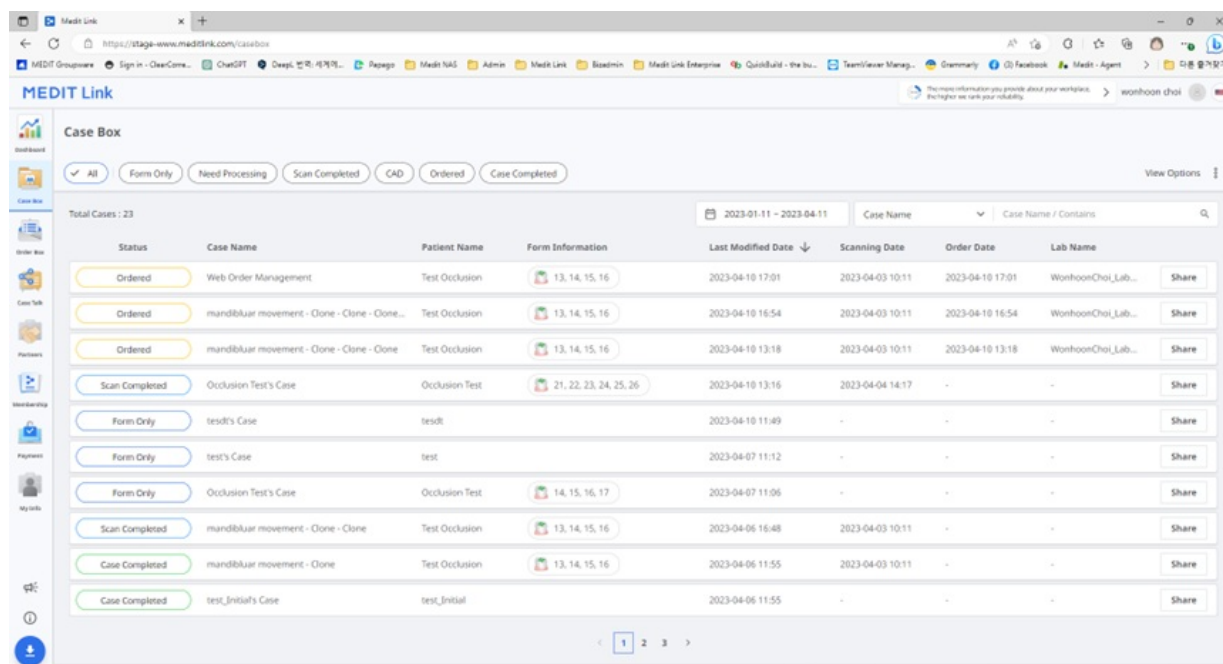

ケースフィルタリング

ステータス別フィルタリング

各ステータスに基づいてケースをフィルタリングできます。

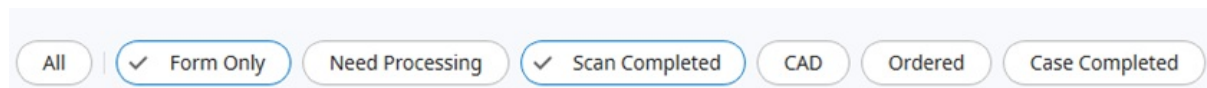

- 表示したいステータスをクリックできます。ブラウザには、選択されたステータスのケースのみが表示されます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

以下のステータスタイプはアカウントタイプに基づいて提供されます。

Case Box(歯科医院)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box(技工所)	すべて/フォームのみ/処理要/スキャン完了済み/CAD/完了

期間別フィルタリング

設定した期間内で最後に修正したケースをフィルタリングし、表示できます。

1. 期間フィルタリングをクリックします。



2. 範囲を選択します。

Last 30 Days

▼

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- すべて:すべてのケースを表示します。
- カスタム範囲:開始日と終了日を特定して、選択した期間内で修正されたケースを表示します。
- 今日:今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日:昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間:今日を除く過去7日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間:今日を除く過去30日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去90日間:今日を除く過去90日間が最終修正日のケースを表示します。
- 今月:今月のケースを表示します。
- 先月:先月のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正のケースをリアルタイムで更新します。

検索別フィルタリング

検索機能を利用して、必要な情報を容易かつ迅速に検索できます。

Case Name ▼


Case Name / Contains

🔍

歯科医院／技工所アカウントに基づくオプションを検索します。

Case Box(歯科医院)	ケース名、患者名、患者ID、技工所名
Work Box(技工所)	ケース名、患者名、技工所名、注文ID

ケースの詳細

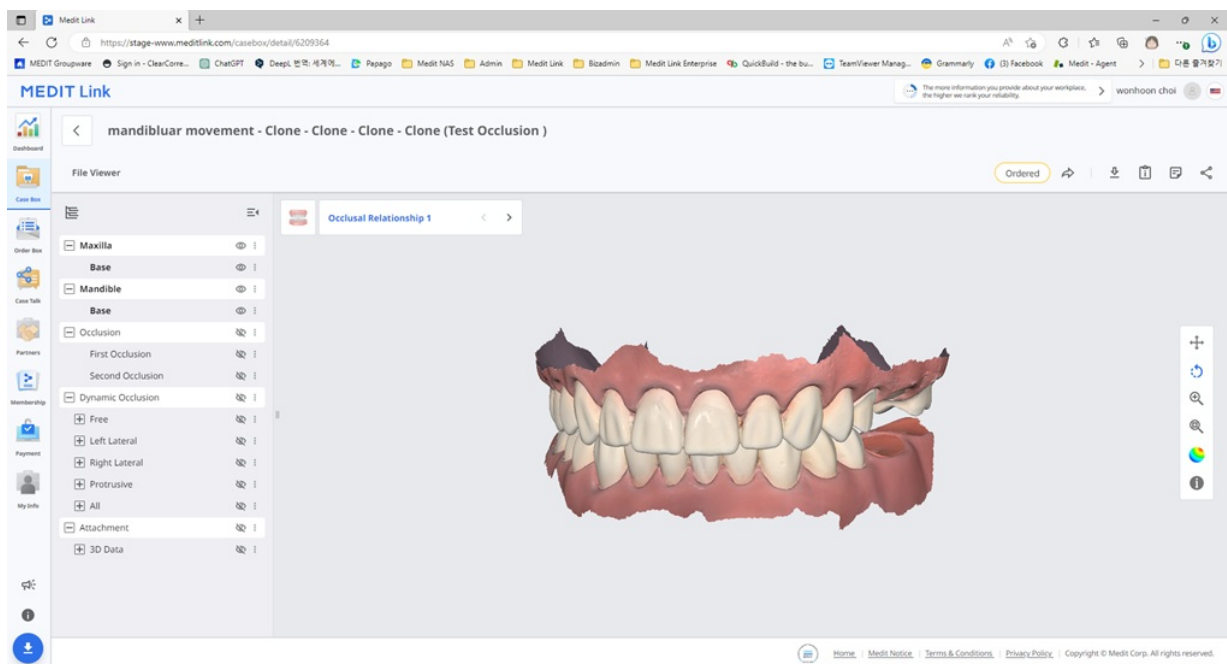

以下のケース管理ツールは、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	詳細を見る	別のBox (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box) に同じケースのショートカットを提供します。
	ダウンロード	ケースのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモ&タグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	共有	共有用のリンクを作成します。 共有リンクを持っているユーザーはChrome、Firefox、Safariなどのブラウザで追加のプログラムをインストールすることなく3Dデータにアクセスできます。 リンクは誰とでも自由に、または特定の人と限定で共有できます。個人情報を保護するために、PINコードまたはリンクの有効期限を設定できます。

Order Box/In Box

Order Box(歯科医院)またはIn Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションの注文済みケースを表示します。

注文詳細

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top bar displays the user name 'wonhoon choi'. The sidebar on the left contains navigation icons. The main content area is divided into two sections: 'Order' (left) and 'Order List' (right). The 'Order' section contains fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The 'Order List' section contains a table with columns: No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The table lists 8 items, all with a price of 0.00. The total price is USD 0.00.

- | | |
|---|---|
| 1 | ケース名および患者名を表示します。 |
| 2 | 注文管理(承認/キャンセル、納品/受領)用の機能を提供します。 |
| 3 | 使用可能なタブの表示: 注文、ファイルビューアー |
| 4 | ケースおよびファイルの管理用の機能を表示します。ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど |
| 5 | 注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。 |
| 6 | 注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。 |


Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文ID、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ、タグ等の注文に関する詳細情報を確認します。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認できます。 ファイルビューアーは取得したまたは添付された3D模型や2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、指定した特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有されているケースリストを確認できます。

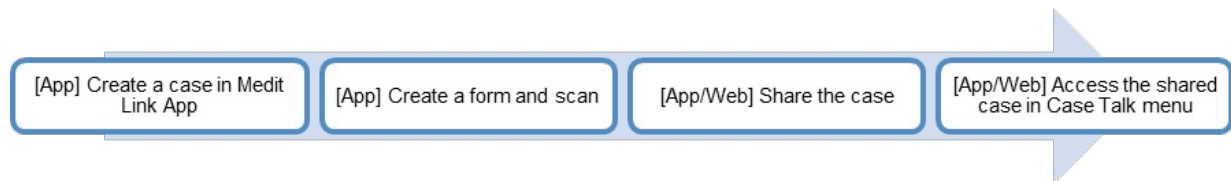


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。


Case Talkの作成

Case Box/Work Boxで作成されたケースに共有リンクを作成できます。

1. 共有するケースを探し、右側の「共有」ボタンをクリックします。

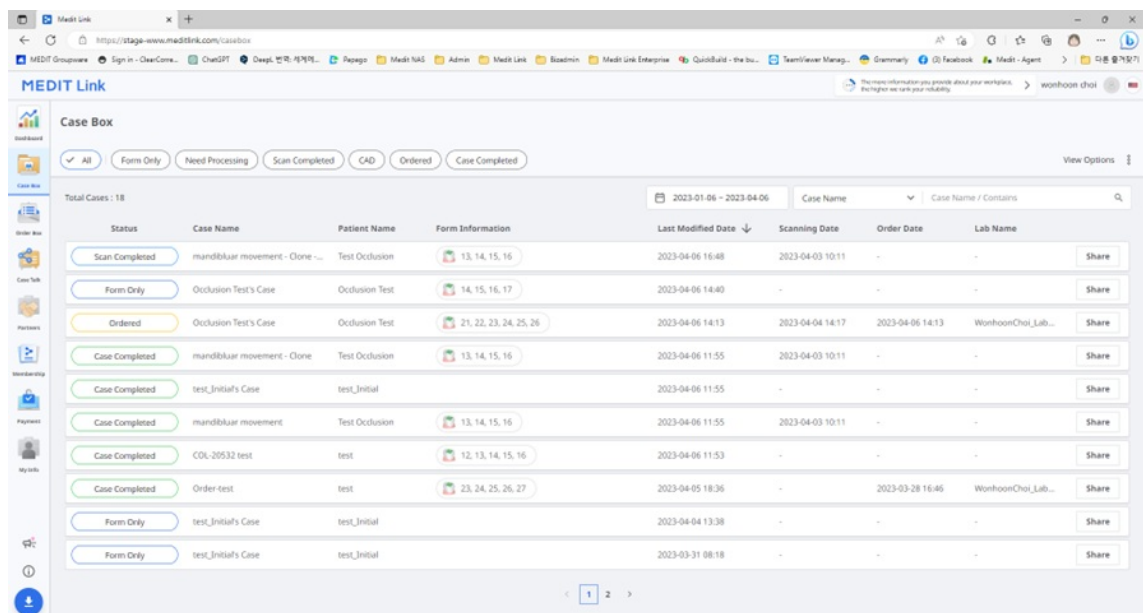

2. 共有したいケースを選択します。

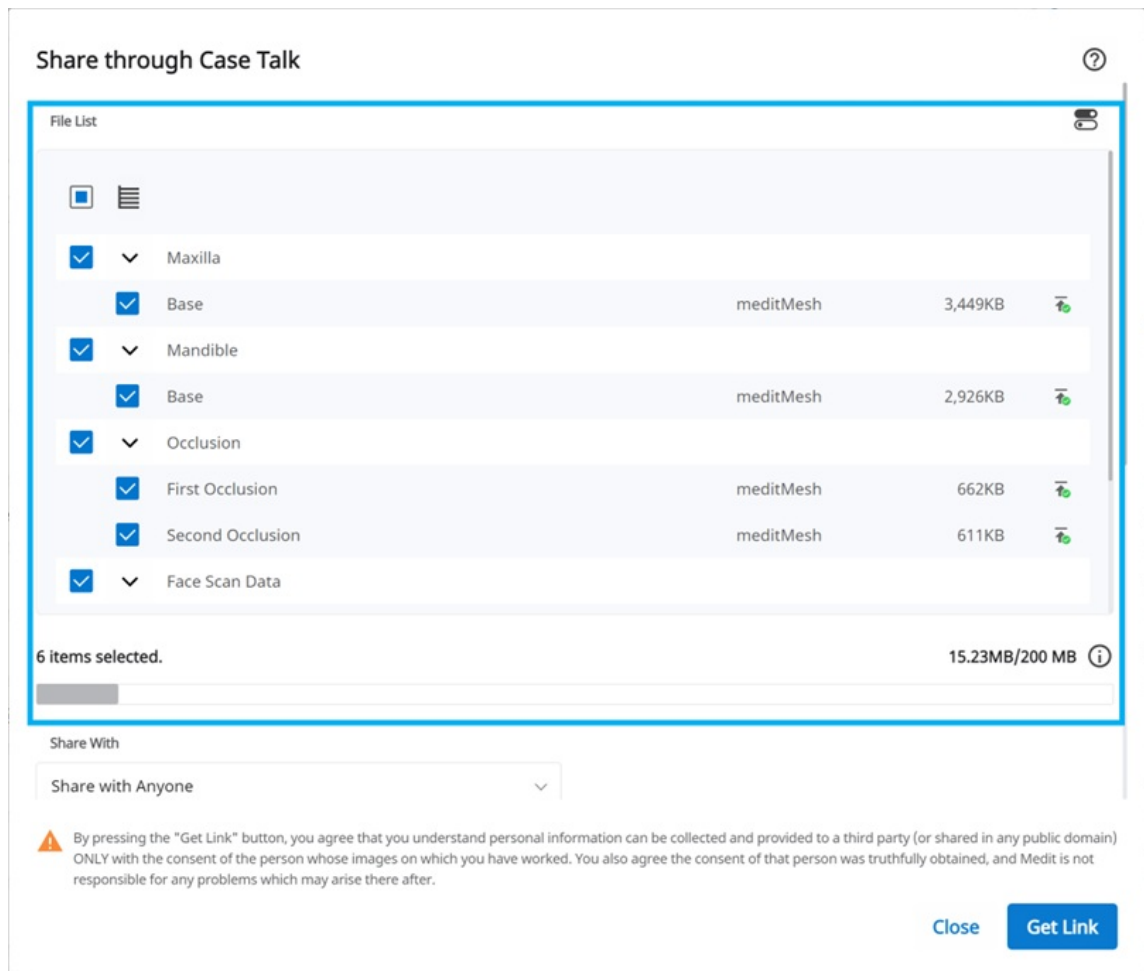

- 共有権限タイプと共有オプションを設定します。
- 「リンクを取得」をクリックし、共有リンクを作成します。

共有権限タイプと共有オプションの設定

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

Share via

PIN Code

☐ PIN Code
Enter PIN Code


Set the PIN code using six digits for privacy protection.

共有相手	- 誰とでも共有 共有リンクを作成します。ファイルを誰とでも共有できます。 - 特定の人と共有する 共有リンクを作成し、特定の人に送信します。
共有方法	「特定の人と共有」を選択する場合、さまざまな方法で特定の人とリンクを共有できます。 - メールアドレス - SMS - パートナー
有効期限	リンクの有効期限を設定します。リンクの有効期限が切れたら、リンクを共有している人は、リンクにアクセスできなくなります。有効期間を今日から最長90日間まで延長できます。
PINコード	データの安全性を確実にするために6桁のアクセスコードを設定します。
患者の名前を共有	このオプションにチェックを入れる場合、リンクを持っているすべての人は患者名を確認できます。
ダウンロード許可を付与する	このオプションをオンにすると、共有リンクを持つすべてのユーザーがファイルをダウンロードできます。
コメント投稿を許可	- このオプションをチェックすると、共有リンクを介して通信できるようになります。 - オプションのチェックを外すと、受信者はコメント閲覧だけができ、コメントを追加することはできません。
コメント	コメントセクションにメッセージを残すことができます。

29

Case Talk詳細

共有ケースでファイルを確認できます。以下の機能は、Case Talk詳細ページ上でご利用できます。

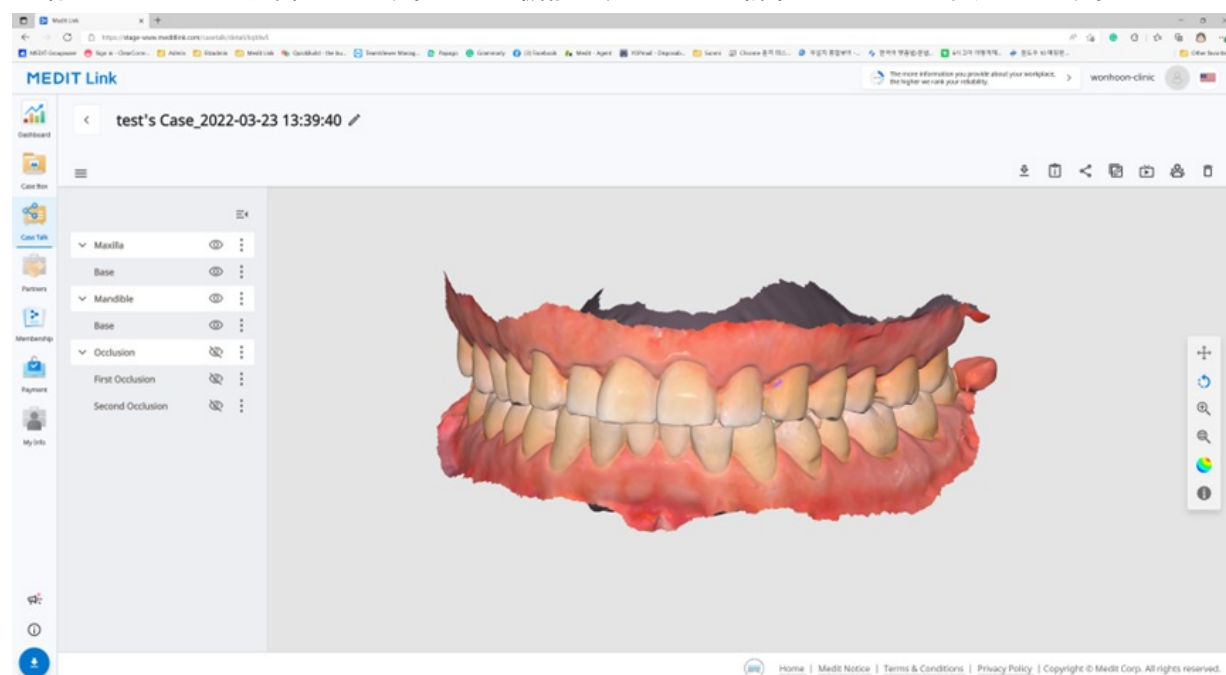

	ダウンロード	このケースのすべてのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更します。
	リンクのコピー	共有リンクをクリップボードにコピーします。コピーされたリンクは、ウェブブラウザ上で共有ファイルを表示します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 なお、画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクにアクセスしているすべてのユーザーを表示します。
	削除	共有リンクを削除します。削除した共有リンクはもうアクセスすることはできません。

■注意事項


以下のサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

Webビューワー

WebブラウザのCase Talkを介して共有データを表示できます。

注釈とコメントを使用してリンクにアクセスした人とやり取りができます。

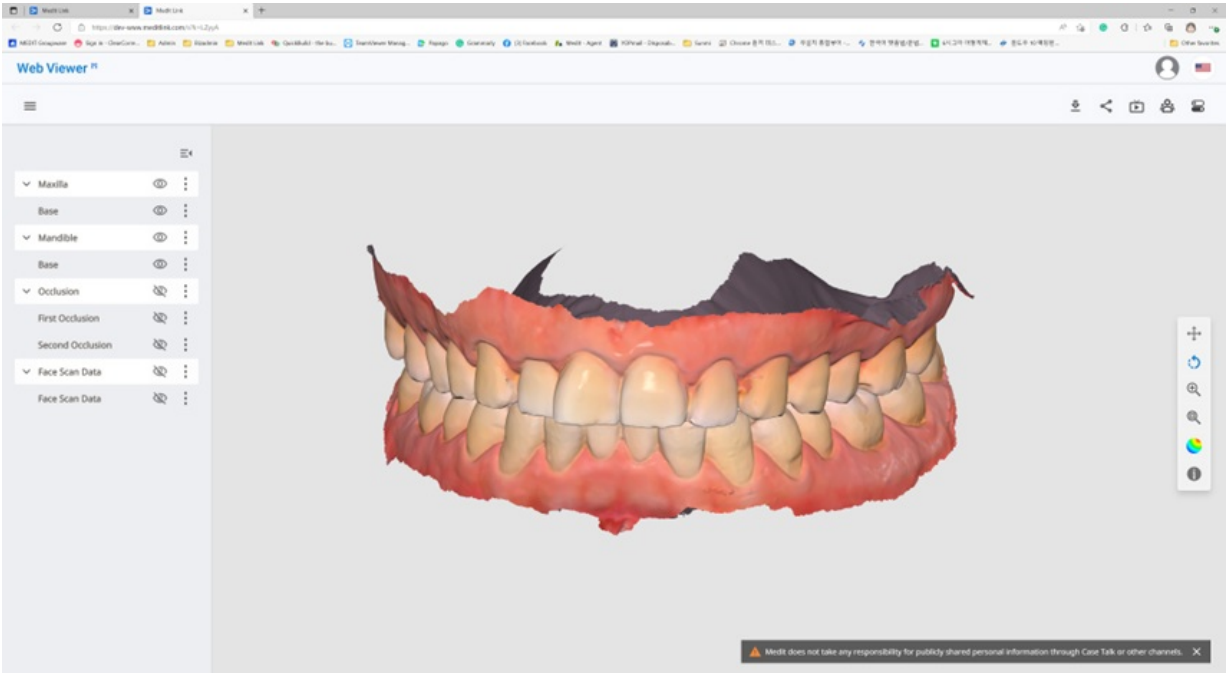

	ダウンロード	この場合、すべてのファイルをPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクに接続しているすべてのユーザーを表示します。
	歯牙ラベリング	歯牙ラベリングシステムを変更します。


❗注意事項

以下のサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

注釈

3Dモデル上の特定の位置に注釈を追加できます。リンクを持っている人は誰でも追加された注釈を閲覧できます。

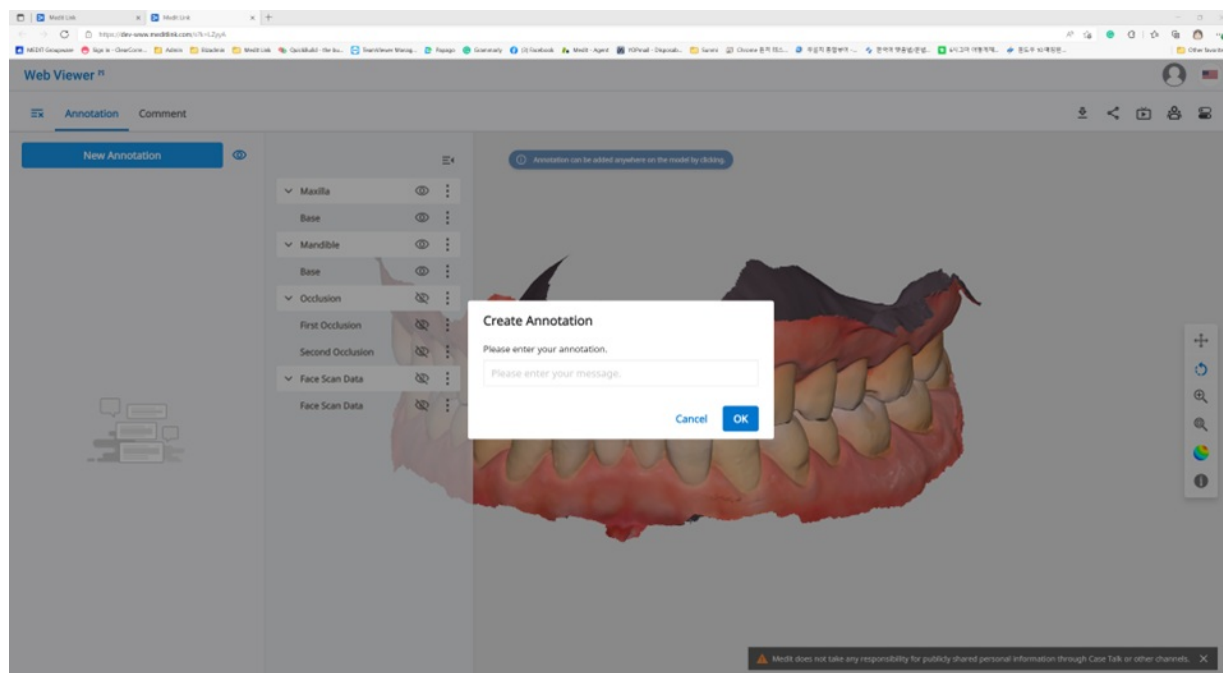

注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 注釈

1. 左上部隅にあるメニューアイコンから「注釈」タブを選択します。「新規注釈」ボタンを使用して、どこでもデータをクリックして注釈を追加します。
2. メッセージを入力し、「OK」をクリックして保存します。

This is a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It features the title 'Create Annotation', the instruction 'Please enter your annotation.', a text input field with the placeholder 'Please enter your message', and two buttons at the bottom: 'Cancel' and 'OK'.

3. 注釈を簡易的な連絡方法として使用できます。
作成済みの注釈をクリックし、返信を入力し「送信」を押します。

This screenshot shows a chat-style interface for an annotation. At the top, it says 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with trash and close icons. Below is 'Annotation 1' with a timestamp '09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

コメント

Web Viewerメニューの「コメント」タブを通して、リンクにアクセスするユーザーとやり取りができます。

■注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- コメント

リアルタイムでの画面共有


リアルタイムで画面を共有できます。

■注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- ライブ

1. 「ライブ」をクリックして、接続しているユーザーと自分のWeb Viewer画面を共有します。


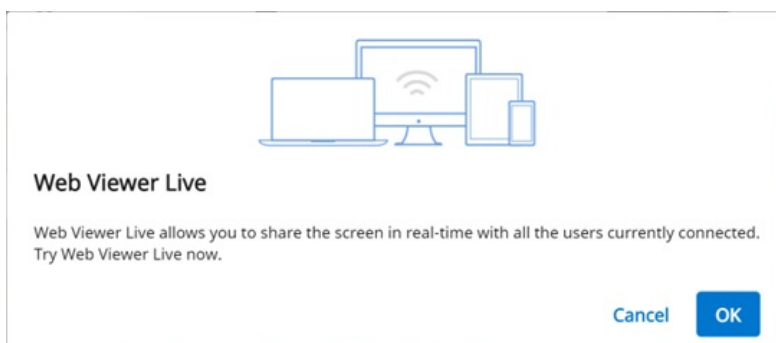


2. 「OK」をクリックして、画面共有を開始します。
3. リンクにアクセスしている他の人は画面共有を承認する必要があります。
4. 画面共有をリクエストしたユーザーの画面は、リクエストを承認した人の画面と同期されます。





データツリー

すべてのデータは、データツリーの属性に従ってグループ化され表示されます。データを表示または非表示、不透明度などを調整できます。

データツリーコントロール

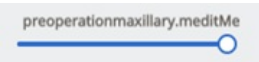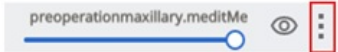表示/非表示	目アイコンをクリックし、ビューのデータを表示または非表示にします。データの表示/非表示をグループまたは個別ファイルでコントロールします。
不透明度	表示されている要素上にマウスを合わせ、不透明度スライダーを確認します。スライダーを調整して、データの透明性を変更します。 
拡張メニュー	拡張メニューは、各データツリー要素の右側に表示されます。以下のオプションが含まれています。  • このみを表示: 現在のデータ以外のデータをすべて非表示にします。 • 非表示: 現在のデータを非表示にします。 • 複製: 現在のケース内でデータを複製します。 • エクスポート: データをローカルPCに保存します。 • 削除: 現在のデータまたはデータグループを削除します。

3D模型のコントロール

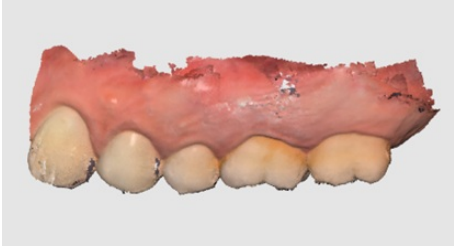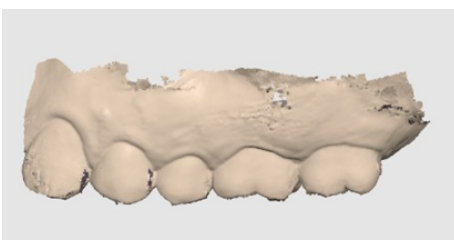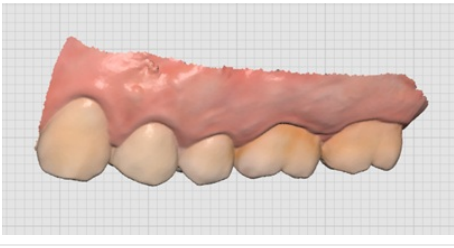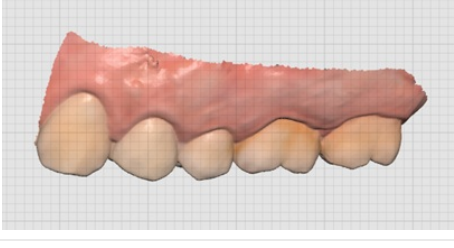	パン		模型を移動します。
	回転		模型を回転させます。
	拡大/縮小		模型を拡大/縮小します。
	ズームフィット		画面中央に模型を配置します。
	模型表示モード	テクスチャオン	実際のテクスチャの色でデータを表示します。 
		テクスチャオフ	データを単色で表示します。 
	グリッド設定 (mm)	グリッドオン	背景にグリッドを表示します。 
		オーバーレイオン	模型上にグリッドをオーバーレイします。 
		グリッドオフ	グリッドを非表示にします。

パートナー

パートナー候補を検索し、パートナーシップをリクエストしたり、現在のパートナーや契約のあるパートナーのリストを表示したりできます。


■注意事項

Googleマップを使用するサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

パートナーを検索する

ビジネス名および/または住所でMedit Linkユーザーの検索ができます。

検索結果で、提携したい組織にパートナーシップのリクエストを送信できます。

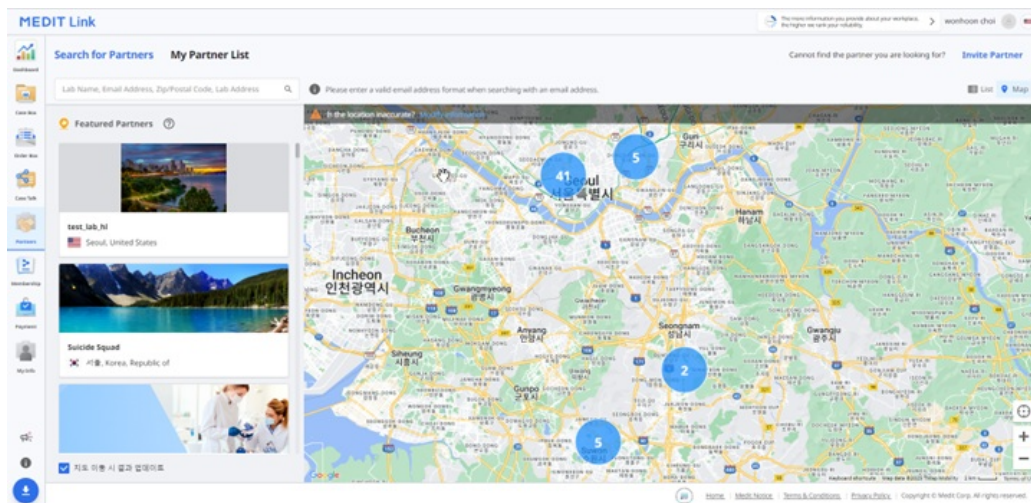


マイ契約リスト

マイ契約リストのすべての既存のパートナー会社との現在のパートナーシップおよび契約を表示できます。

契約はパートナーシップとどのような違いがありますか？

あるビジネスと提携すると、その組織と契約を締結するリクエストを出せます。

- パートナーが契約のリクエストを承認すると、注文した支払い手続きを進められます。

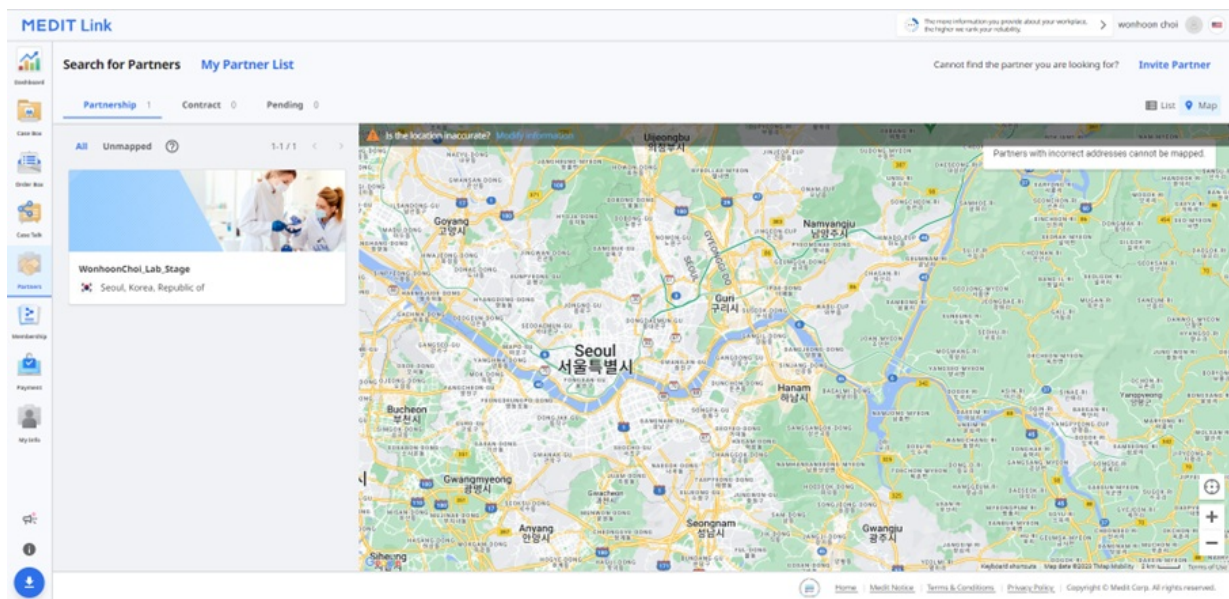

注意事項

以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 契約

パートナーの招待

提携したい組織がある場合、Medit Linkに参加するように招待することができます。招待が承認されるとパートナーシップは自動的に形成されます。

1. 画面の左上にある「パートナーを招待」をクリックします。
2. 提携したい業者のメールアドレスを入力し、パートナーシップリクエストと共に招待メールを送信します。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. 招待を受けた組織が招待を承認し、Medit Linkに登録すると、パートナーシップは自動的に成立されます。

メンバーシップ

Medit Linkのメンバーシップポリシーは、より広範なデジタル環境を構築し、徐々にクラウドプラットフォームに基づくさまざまなサービスを提供することを目的としています。

新しいメンバーシップポリシーで当社のお客様により一貫性があり、パーソナライズされたご利用を提供できることを目標としています。

2つのメンバーシッププランがご利用できます。

Standard

- すべての登録済みユーザー向け無料標準プラン
- 1GBのクラウドストレージ
- 新規ユーザー向け

Premium

- 有料プラン
- 10GBのクラウドストレージ
- 多くのケースやさまざまなデータを所有するユーザー向け
- 1ヶ月間無料トライアル

	スタンダード	プレミアム
クラウドストレージ	1 GB	10 TB
月額料金	無料	\$0.99/月
* クラウドストレージではRAWデータが占めているスペースは計算されません。		

注意事項


メンバーシッププランはMedit Link中国でご利用できます。機能の公式リリースまで無料でプレミアムプランをご利用できます。

メンバーシップ

The screenshot displays the Medit Link user interface for the Membership section. On the left, a sidebar lists navigation options like 'Dashboard', 'Case Note', 'Order Note', 'Case Talk', 'Resources', 'Membership', 'Payment', and 'My Info'. The main content area is titled 'My Plan' and features an illustration of a person using a smartphone. Below the illustration, it states 'Standard Free' and lists benefits: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is visible. To the right, the 'Cloud Storage' section shows a 'Set Period' from 2018-01-01 to 2023-04-06. A donut chart indicates that 353.21 MB out of 1 GB is used. Below the chart, there are checkboxes for 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (11.97 GB), and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB). At the bottom, there is a note about payment difficulties and a 'Click' link.


マイプラン

左側のセクションで現在ご利用のメンバーシッププランを確認できます。こちらからいつでもメンバーシップのサブスクリプションステータスを変更することもできます。

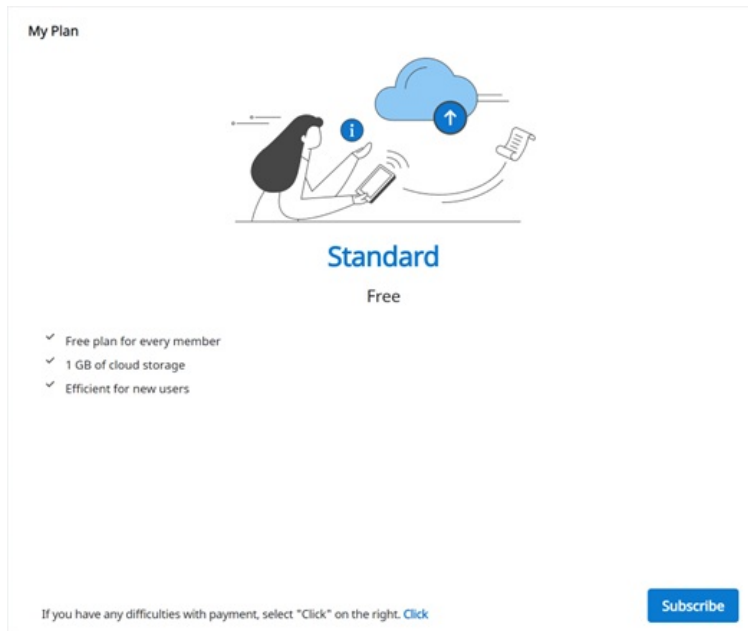

クラウドストレージ

右側のセクションで、クラウドストレージの管理ができます。

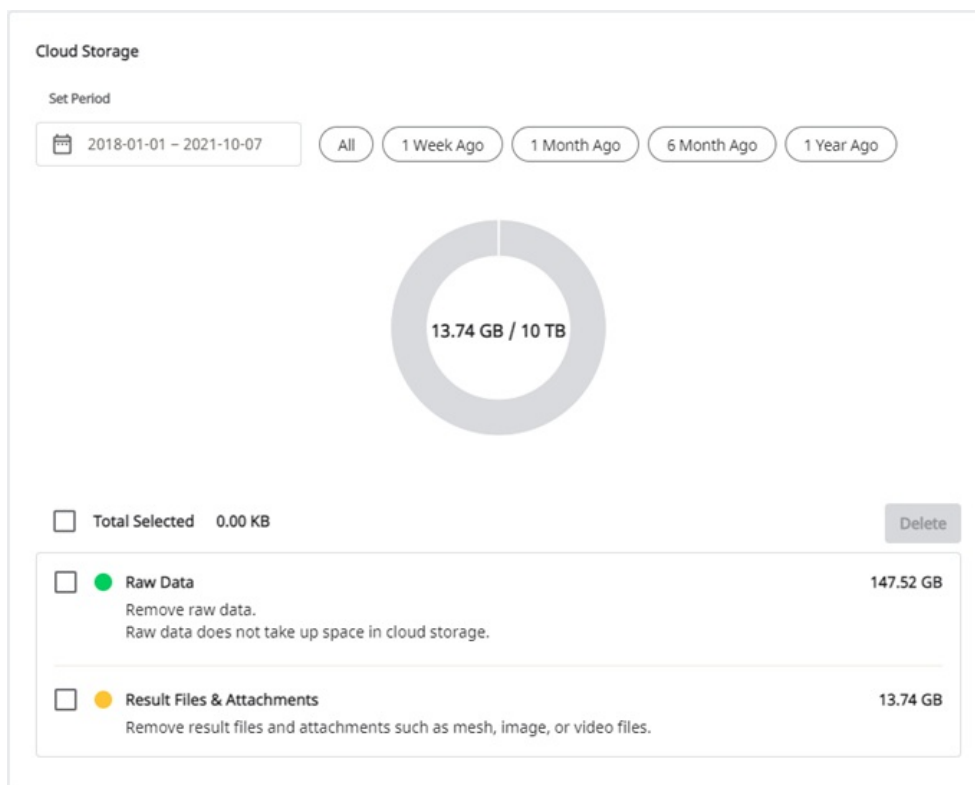

期間の設定

作成したデータを削除する特定の期間を設定します。

- すべて: すべてのファイルを表示します。
- 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。
- 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。
- 6か月前: 作成後6か月を経過したファイルを表示します。
- 1年前: 作成後1年を経過したファイルを表示します。


RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を保護するために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。
結果ファイルと添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、容量を空けます。

サブスクリプション登録


現在、引き換えコードでスタンダードプランまたはプレミアムプランをご利用の場合、プレミアムメンバーシップを登録できます。

Stripeサービス(www.stripe.com)からお支払いを完了できます。

1. 「登録」ボタンをクリックします。

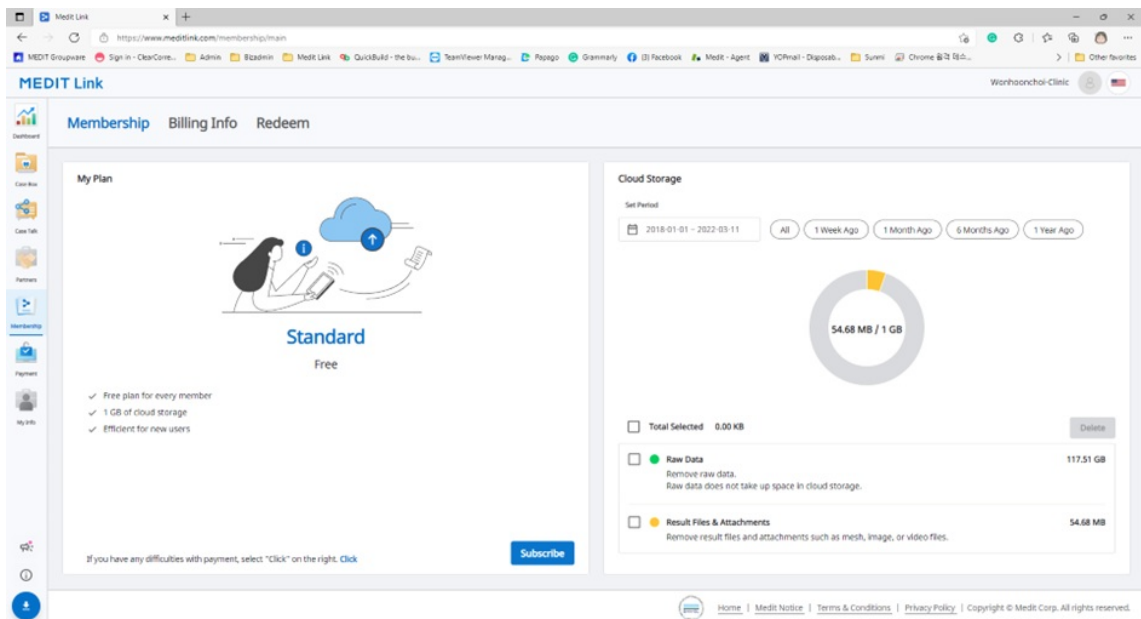

2. プレミアムプランの説明を確認し、「登録」を再度クリックします。

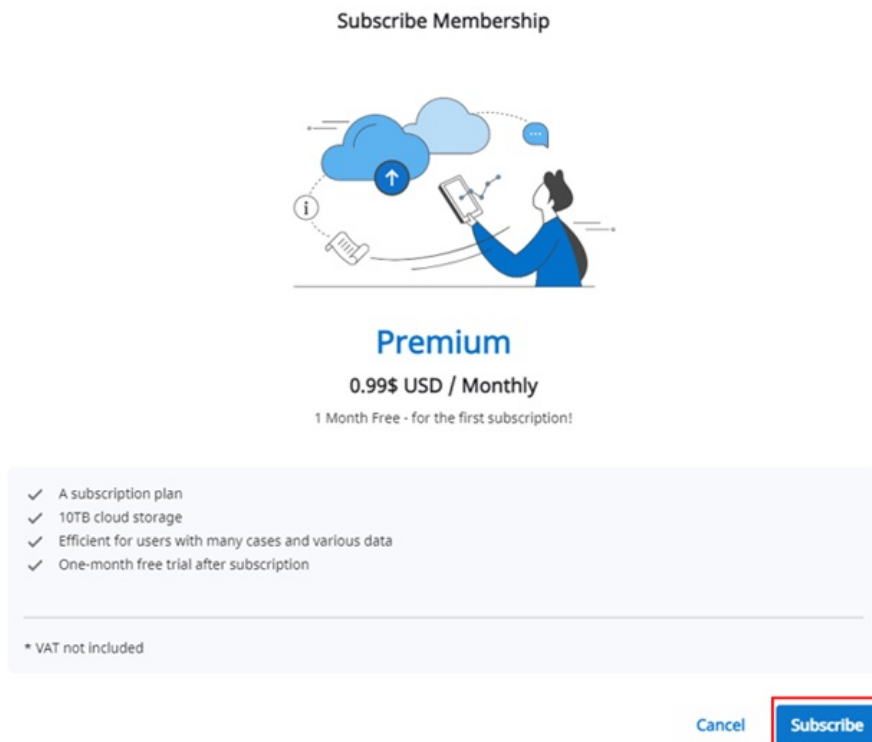

3. 価格と条件を確認し、支払いに必要な情報を入力します。次に、「登録」をクリックします。

←

MEDIT Link

TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic

\$0.99

Billed daily

Subtotal

\$0.99

👉 1 MONTH FREE – for first subscription

- \$0.99

100% off for a day

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe


By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

Subscribe Membership


Payment Successful.

登録を解除する

1. 「登録解除」をクリックします。

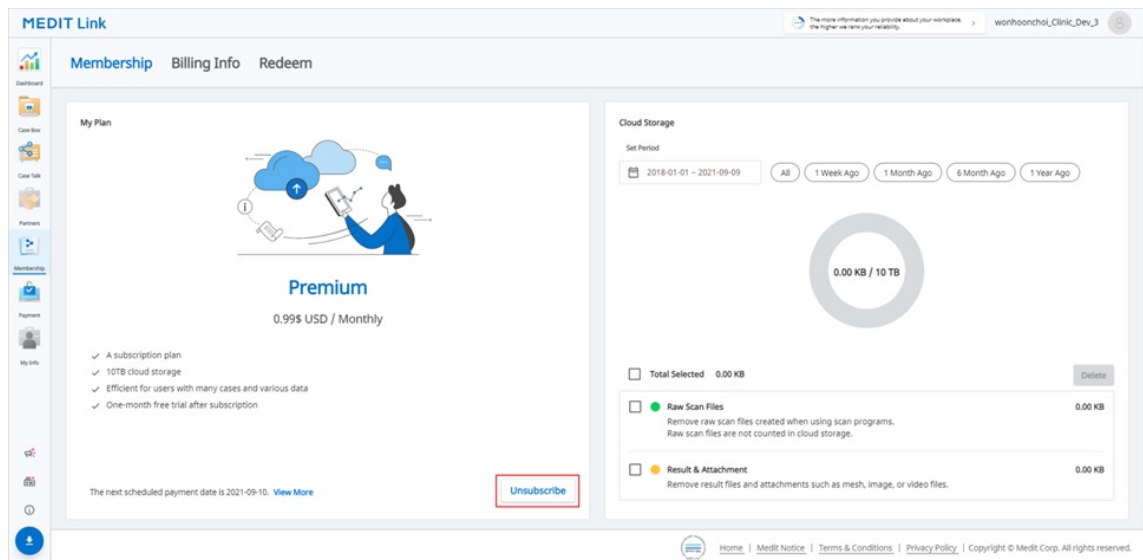

2. 「登録キャンセル」をクリックします。

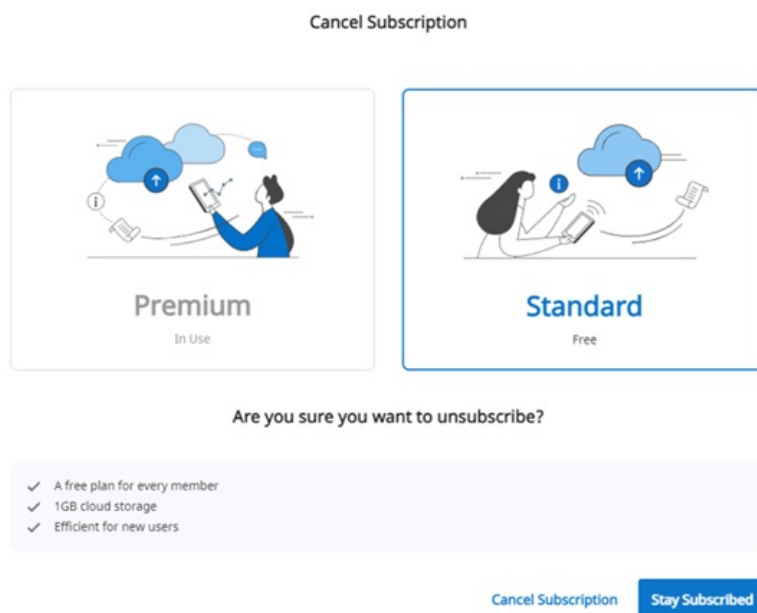

3. 登録解除を確認するには、次のポップアップ方式ウィンドウから再度「登録キャンセル」をクリックします。


Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. 登録がキャンセルされました。
5. プランは、次回支払日からスタンダードプランに変更され、クラウドストレージは1 GBに制限されます。クラウドストレージが容量を超えている場合、ファイルはバックアップされず、注文および共有機能は利用できません。

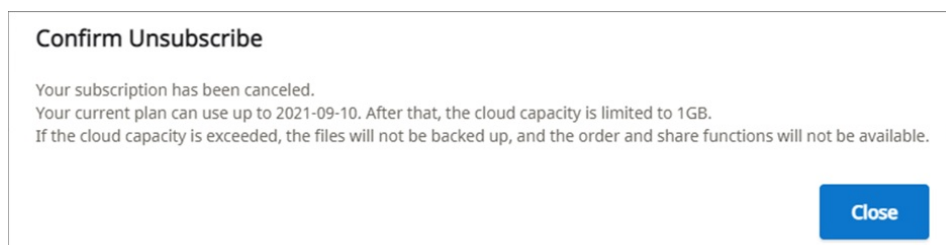

請求情報

各支払いのインボイスを含めたメンバーシップ登録に関する支払い履歴を確認できます。また支払い方法を追加または変更することもできます。変更は次回支払い予定日から適用されます。

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

支払い方法の追加方法

1. 「支払い方法の編集」をクリックします。

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangular box to indicate the next step in the process.

2. 「支払い方法の追加」をクリックします。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. 必要な情報を入力し、「追加」をクリックします。

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. 新たに追加された支払い方法は、デフォルトとして設定され、次回のお支払いから使用されます。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

支払い方法の変更方法

1. 支払い方法

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. 「デフォルトにする」をクリックし、デフォルトの支払い方法として選択したカードを設定します。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

引き換え

プロモーションの一環として提供された引換コードを登録します。引換コードを使ってプレミアムメンバーシップを使用できます。

引換コードの登録

1. 引換コードを入力し、「登録」をクリックします。

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. 通知を読み、ポップアップ式ダイアログで「登録」または「適用」を選択します。

- **登録**: 引換コードを登録します。登録後に後で引換コードを有効化し、使用することができます。
- **適用**: 引換コードを登録し、有効化します。プロモーション割引はすぐに適用されます。

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

引換コードの有効化

複数の引換コードを登録できますが、使用するコードを有効化する必要があります。

1. 使用するコードの横にある「有効化」ボタンをクリックします。
「有効」ステータスのコードがない場合、選択するコードがすぐに適用されます。すでにコードが有効化されている場合、そのステータスは「待機中」に変わり、選択するコードが代わりに使用されます。現在の引換コードの有効期限が切れた場合、待機中のコードが自動的に再有効化されます。

2. 注意事項

一つのコードのみが「待機中」ステータスとなります。

The screenshot shows the 'Medit Link' web application interface. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The 'Redeem' section is active, displaying a 'Register Redeem Code' form with a 'Redeem Code' input field and a 'Register' button. Below this, the 'My Redeem Code' section contains a table with the following data:

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month	[Redacted]	Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month	[Redacted]	Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month	[Redacted]	Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month	[Redacted]	Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

支払い

■注意事項


以下のサービスは、Medit Link Chinaでは利用できません。

- 支払い

. 支払い詳細(歯科医院、&技工所アカウント)

支払い情報ページからパートナーとの間の支払いや取引履歴を確認できます。

. 支払いアカウント情報(技工所アカウントのみ)

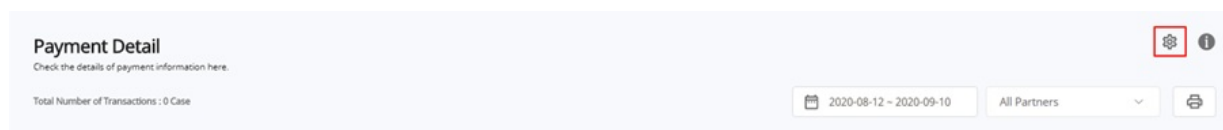

この機能は、技工所管理者アカウントのみが利用でき、パートナーが支払う情報を入力できます。

- オンライン決済システムからパートナーが注文するために支払いアカウント情報を入力する必要があります。

■注意事項

Stripeがサポートする国を選択する場合、Stripeに登録するためのボタンをクリックすることでStripeに移行します。

韓国を選択し、支払いを受領する銀行口座番号を入力できます。支払いはKCPで処理されます。

マイ情報

マイアカウント

登録時に入力した情報を確認／編集でき、メンバーシップの確認ができます。

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



① JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) ▼

Country
Korea, Republic of ▼

① Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

マイ歯科医院/技工所（管理者アカウントのみ）

こちらで歯科医院/技工所についての情報を確認／編集できます。このセクションは管理者タイプのアカウントだけがご利用できます。

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[✓ Address Information](#) [✓ Organization Information](#) [⊖ Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

① Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
① Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

① Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of ▼

State/Province *
Seoul

① If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

マイ・スキャナー

アカウントの接続済みデバイス情報を確認できます。

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

マイ価格表（技工所管理者アカウントのみ）

技工所が提供する製品および各製品の価格情報を入力します。

My Account My Organization My Scanner My Price List ⓘ

Teeth Arch AED (₩) ▼

✓ All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (0/7) Diagnostic Wax-Up (0/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)

	Name	Type	Method	Material	Price
	인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	56.03
	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

❗注意事項

- パートナーと契約すると、パートナーはこの製品リストおよび価格表に基づいて製品を注文できるようになります。
- パートナーとのみパートナーシップを有している場合、Medit Linkでは価格情報を必要とする注文をサポートしません。

その他のメニュー

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit情報

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報を取得できます。Medit Academy、Medit Academy YouTube、Meditヘルプセンター等のMeditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Medit Linkアプリのダウンロード

ウェブから最新のプログラムインストーラーをダウンロードできます。このメニューは、製品パッケージで提供されたインストーラーを紛失した場合やインストーラーが古いバージョンの場合に便利です。


50

ⓘ 注意事項

Medit Linkはインターネット接続がされている場合、自動更新されます。

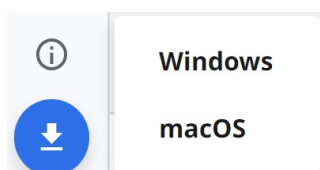

概要

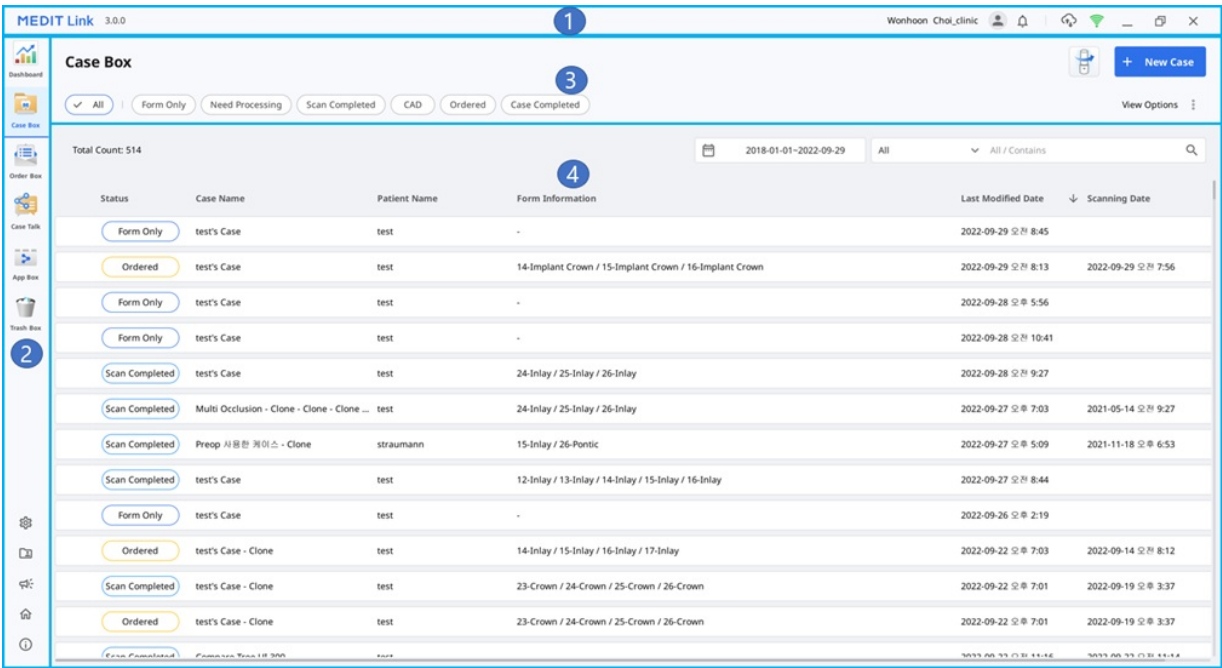

1	タイトルバー	詳細情報については、Medit Linkアプリ>タイトルバーを参照してください。
2	メニュー	詳細情報については、Medit Linkアプリ>メニューを参照してください。
3	ツールと機能	詳細情報については、Medit Linkアプリ>ファイルビューアーおよびMedit Linkアプリ>表示オプションを参照してください。
4	ケースリスト	詳細情報については、Medit Linkアプリ>フィルタリングと検索を参照してください。

Box概要

ワークフロー		歯科医院アカウント	技工所アカウント
手順1	ケース作成	Case Box: ケースを作成し、さまざまなフィルタリングと検索オプションでケースを簡単に検索し、確認できます。作成済みケースで、スキャンプログラムや作業するCADプログラムに直接リンクできます。	
手順2	ケースの注文/管理	Order Box: 注文済みケースを管理します。注文からケース完了までのプロセスを管理する機能が提供されます。	In Box: 受領した注文のケースを管理します。ケースの承認、拒否、発送、完了のプロセスを管理する機能が提供されます。
手順3	スキャン/CADでの作業		Work Box: In Boxから転送したケースまたは自分で作成したケースを管理します。作業するスキャンプログラムやCADプログラムに直接リンクできます。
手順4	共有ケース	Case Talk: 作成されたケースは、制限ありまたは制限なしで、特定の人やMedit Linkの他の登録メンバーと共有できます。	


手順 5	補完または追加作業	App Box : デジタル歯科ワークフローを補完するさまざまなアプリを提供しています。 Medit またはサードパーティ製のアプリをダウンロードし、インストールできます。
手順 6	ケースの削除/復元	Trash Box : Trash Boxのケースを表示、復元または永久に削除できます。

下記の表は歯科医院および技工所アカウントの各タイプで利用できるBoxについての概要です。

アカウントタイプ		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
歯科医院アカウント	管理者	○	○	X	X	○	○	○
	メンバー	○	X	X	X	○	○ * 復元機能のみ	○
技工所アカウント	管理者	X	X	○	○	○	○	○
	メンバー	X	X	X	○	○	○ * 復元機能のみ	○

タイトルバー

タイトルバーからネットワークステータス、クラウドの同期、通知のような機能に素早くアクセスできます。

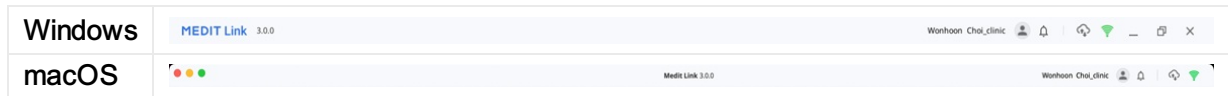

ユーザー情報

ユーザー情報は、プロフィールの画像、組織名、メールアドレス、ユーザー名などの基本的情報が含まれています。

また、ログアウトオプションやMedit Linkウェブのマイアカウントページへのショートカットも提供しています。

1	プロフィール画像を表示します。
2	組織名、メールアドレス、ユーザー名を表示します。
3	現在のアカウントからログアウトします。
4	現在のアカウントでログイン中にMedit Linkウェブに移動します。登録時に入力したアカウント情報を確認、編集、管理することができます。

通知

契約、注文、作業進行に関連する通知を表示できます。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|--|
| 1 | ボックスにチェックを入れると、未読メッセージだけを表示できます。 |
| 2 | いずれかの通知をクリックすると、すぐに関連するケースまたはWebページに移行します。 |

ケース同期マネージャー

[illegible]

合計ケース数/選択済みケース数	アップロードする必要があるすべて/選択したケース数を確認します。
すべてをアップロード	すべてのケースをクラウドにアップロードします。
すべてをキャンセル	すべてのアップロードリクエストをキャンセルします。
	ケースをクラウドにアップロードします。
	ケースのアップロードをキャンセルします。
	ケースのアップロードを再試行します。

合計ケース数/選択済みケース数	ダウンロードする必要があるすべて/選択したケース数を確認します。
すべてをダウンロード	すべてのケースをPCにダウンロードします。
すべてをキャンセル	すべてのダウンロードリクエストをキャンセルします。
	ケースをPCにダウンロードします。
	ケースのダウンロードをキャンセルします。



ケースのダウンロードを再試行します。

ネットワークステータス

Medit Linkでは、ネットワークに接続されている時にすべてのサービス機能をシームレスに使用できるようにします。

リアルタイムでネットワーク接続のステータスを確認できるように、ネットワークステータスアイコンはタイトルバーに表示されています。

ネットワーク接続が良くない場合は、以下の制限がかかる可能性があります。

- ケースの注文、ケースの作成、Case Talk経由での共有、クラウドの同期等の機能が制限されます。
- ネットワーク環境の影響のため、サービスの全体的なパフォーマンスが低下します。

この場合、基本的な作業を行うためにオフラインモードを入力し、インターネットに接続されたら必要な機能を使用します。

❗注意事項

ネットワーク速度記号は、現在のエリアとAWS (Amazon Web Service) 間の応答速度を示しています。使用しているネットワーク速度を表示しているのではないため、使用しているネットワーク速度は十分であっても、ステータスは悪いと表示される可能性があります。


他の処理で同じネットワークを使用している場合、速度が弱いまたは悪いと表示されることがあり、Medit Linkの全体的なパフォーマンスが悪くなることがあります。この場合、他の処理と一緒にネットワークを共有しないでください。

例えば、「RAWデータのアップロード」機能はネットワーク処理のかなりの部分を占めます。ステータス記号が弱いまたは悪いと表示されている場合には、設定 > RAWデータのアップロードにアクセスし、「自動アップロード」をオフにします。

メニュー

Dashborad

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートとして確認できます。

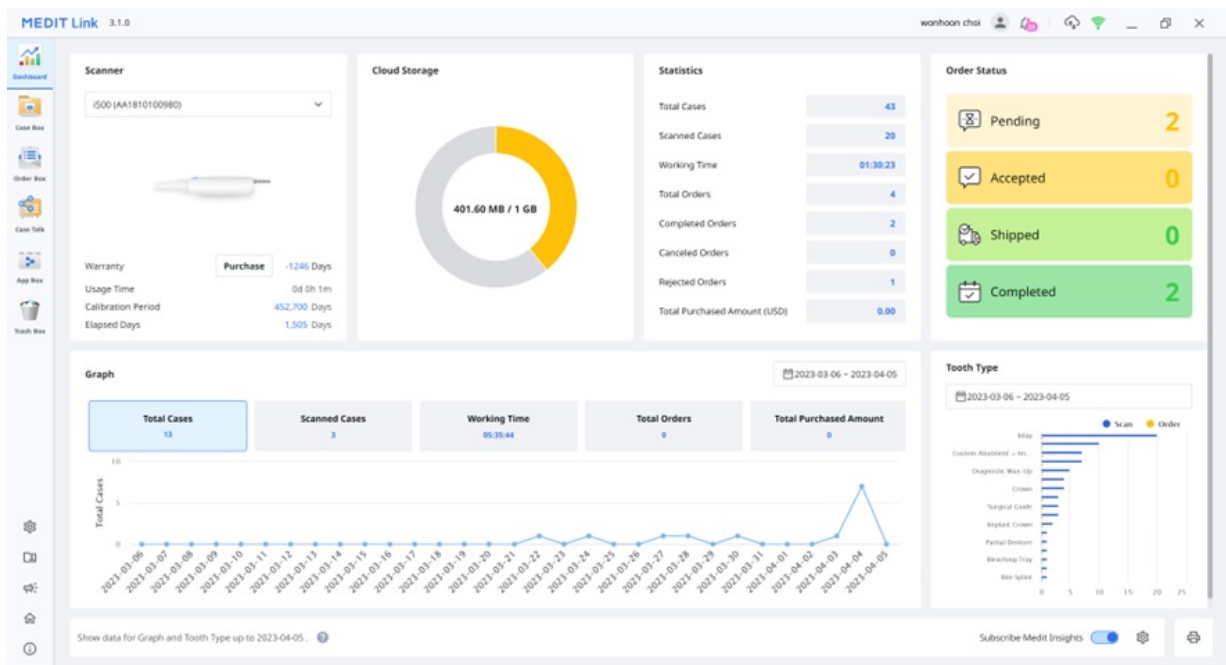

注意 事項

DashboardおよびMedit Insightsに関する詳細情報については、[Medit Linkウェブ>Dashboard](#)を参照してください。

Case Box/Work Box

No.	Type	Method	Material	Shade
24	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
25	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
26	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

1	ケース名および患者名を表示します。
2	使用可能な主な機能の表示: 注文/スキャン(開く)/注文ボタンとアプリアイコン
3	使用可能なタブの表示: フォーム、CAD、ファイルビューアー
4	ケースとファイル管理用機能を表示します。
5	選択済みCADプログラム用のフォーム登録UIを表示します。
6	選択した歯番を選ぶためのタイプ/方法/シェード情報を提供します。
7	選択した歯に適用されるタイプ/方法/材料/シェード情報を表示します。

Case Box／Work Box中のタブ

フォーム	CAD	ファイルビューアー
フォームタブでは、タイプ、方法、歯番用の材料、スキャンオプション等のスキャン作業に関する基本情報を入力するためのUIを提供します。入力する情報は接続しているスキャンプログラムに送られ、パートナーに発注する際の注文情報として使用されます。	CADタブはCADオプションを設定するためのUIを提供します。 設定した情報は、接続されているCADプログラムに送られます。	スキャンプログラムとCADが生成した結果ファイルを表示します。 ファイルビューアーは、取得または添付されている3Dモデルと2D画像を表示し、管理します。


Case Box／Work Box中のタブ

以下の機能は、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	詳細を見る	別のBox(Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box)の同じケースにショートカットを提供します。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモ&タグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	ケース履歴	ケース履歴に関する詳細情報を提供します。 History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	削除	ケースを削除します。 注文済みケースまたはオフラインで作成したケースを削除することはできません。
	複製	Case Boxにある現在のケースの複製を作成します。すべてのデータは複製済みケースにコピーされます。 これは、同じ患者のための治療情報を複製または同じ情報またはファイルを使用して追加の発注をする際に便利な機能です。

	添付	さまざまな形式でファイルを添付します。
	エクスポート	スキャンまたはCAD結果ファイルをローカルPCにエクスポートします。ファイルをエクスポートする際に希望するファイル形式を選択できます。 エクスポートされたファイルは、CADおよびCAMのソフトウェアでさらに作業をするために使用できます。
	共有	共有するためにリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。 誰とでもまたは特定の人だけと自由にリンクを共有できます。個人情報保護のために、PINコードまたはリンクの有効期限を設定できます。
	技術サポートへの問い合わせ	サポートリクエストを提出できる、ヘルプセンターページに移動します。

Order Box/In Box

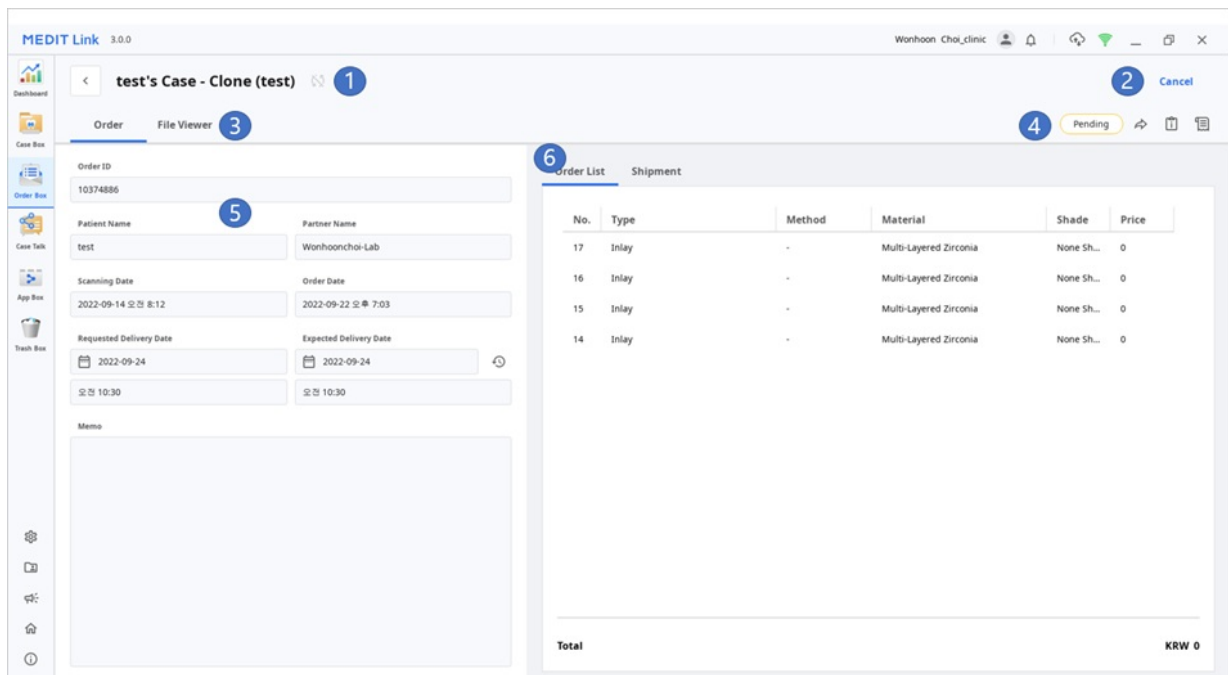


1	ケース名および患者名を表示します。
2	注文管理（承認/キャンセル、納品/受領）用の機能を提供します。
3	使用可能なタブの表示：注文、ファイルビューアー
4	ケースおよびファイルの管理用機能の表示：ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
5	注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
6	注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。

Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
----	-----------

スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。
ファイルビューアーは取得したまたは添付された3D模型や
2D画像を表示し、管理します。

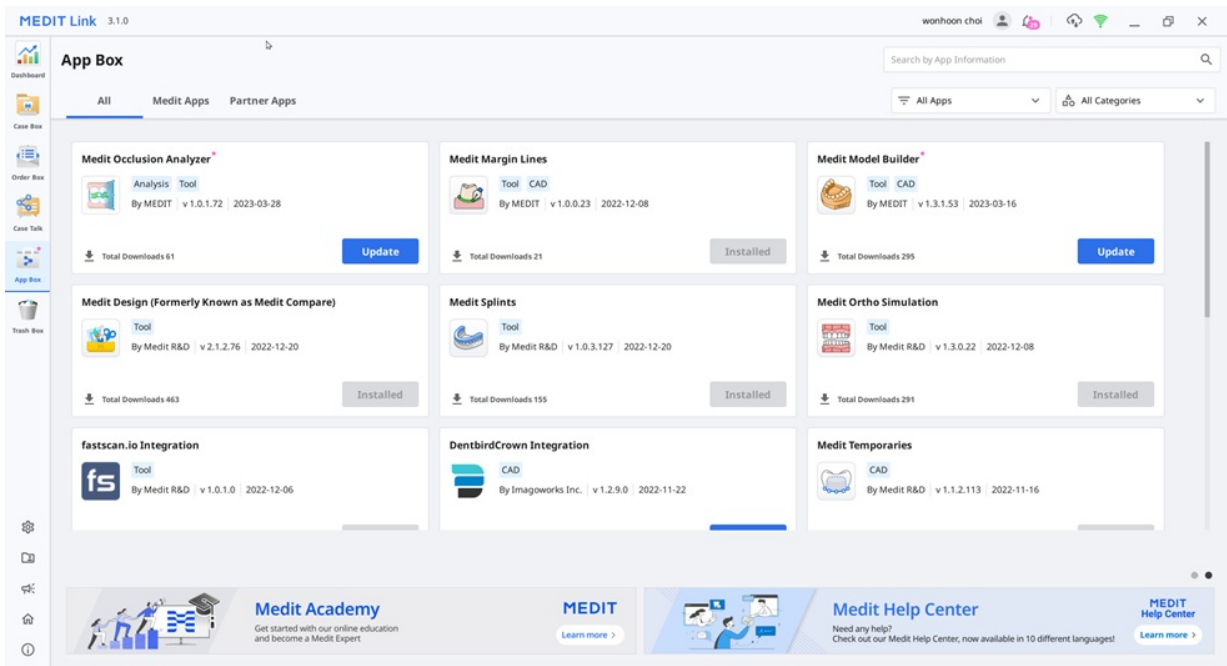


Trash Box

Trash Boxは一時的に削除済みケースを保存します。Trash Boxにあるあらゆるケースは、復元するか、永久に削除が可能です。

⚠ 注意

Trash Boxから削除されたデータは、PCやサーバーから永久に削除され、復元することはできません。

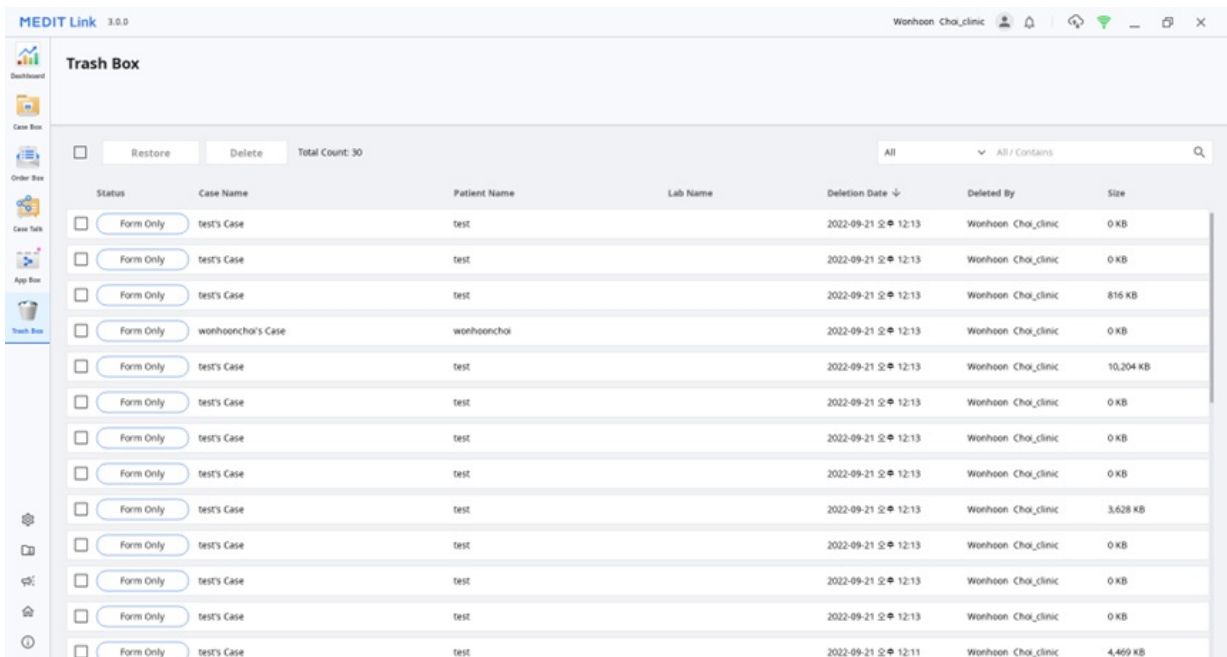

設定

設定画面の詳細情報については、[Medit Linkアプリ>設定](#)を参照してください。

患者管理

患者管理画面上で患者を追加、編集、削除または結合できます。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

AB Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	株式会社				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Close

新規患者の追加

1. 「新規患者」をクリックします。

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.
[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. 新規患者ダイアログに必要な情報を入力後、「保存」をクリックします。

患者の削除

注意事項

該当する患者にケースがない場合には患者のみを削除できます。

1. リストから削除する患者を選択します。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.I.Abument2				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abument Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	sulkyadokf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. 「削除」をクリックします。

患者の結合

複数の患者のすべてのケースを一人の患者に結合できます。

1. リストから結合したい患者を選択します。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18	/	
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	/	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	/	
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17	/	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	/	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	/	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	/	
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15	/	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	/	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	テスト用患者				2	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	/	
☐	test21231				26	2019-07-25	2020-09-11	/	

Close

2. 「患者の結合」をクリックします。
3. すべてのケースを結合したい対象の患者を選択します。
4. すべてのケースは対象の患者に結合され、その対象の患者の患者情報は維持されます。

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. 「適用」をクリックして、結合を実行します。

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

Medit Linkホームページへ移動

現在ログインしているアカウントでMeditLinkウェブにアクセスします。

Medit情報

Medit Linkの使用に関してさまざまな情報を取得できます。Medit Academy、Medit Academy YouTube、Meditヘルプセンター等のMeditのトレーニングや情報関連のリソースにアクセスします。

Need more help? ×

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

設定

一般設定

全般的なシステム設定のオプションを提供します。

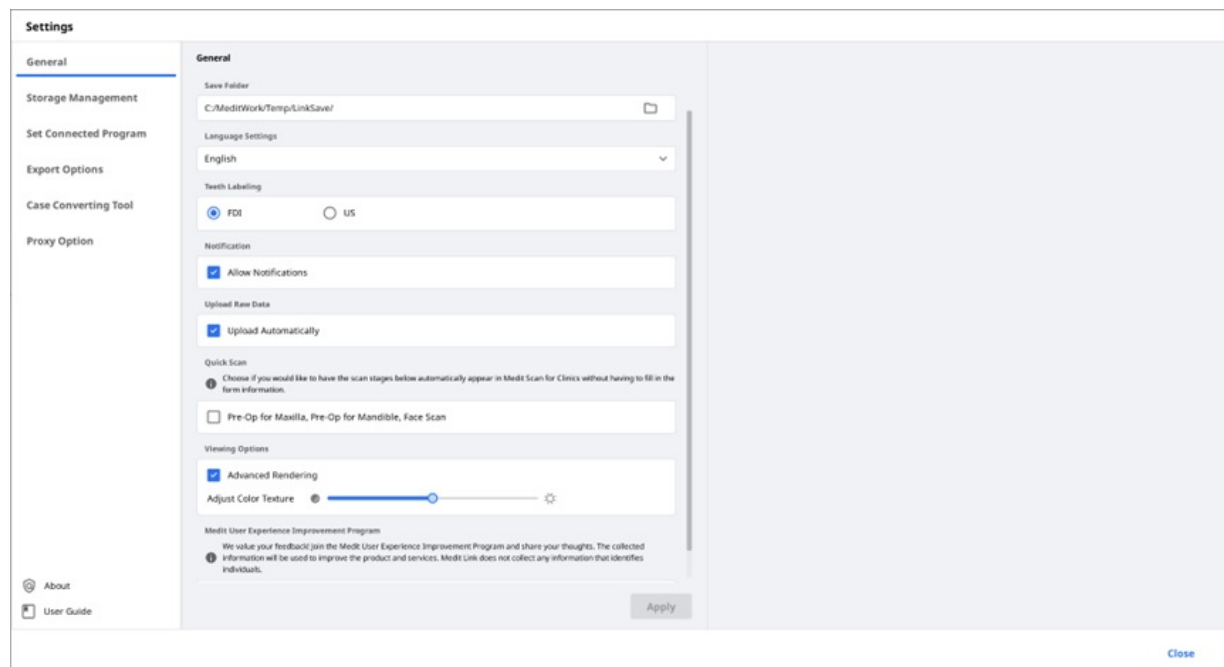

フォルダの保存	Medit Linkおよび接続されているプログラムで生成された結果を保存するためのフォルダーを特定します。	
言語設定	プログラム用の言語を選択します。	
歯牙ラベリング	FDAとUSのいずれかの歯牙ラベリングシステムを選択します。	
通知	チェックを入れると、プログラムの更新情報についての通知を受信できます。	
RAWデータをアップロード	チェックを入れると、RAWデータはクラウドに自動的にアップロードされます。これは、別のPCで同じアカウントを使用してMedit Linkを使用時にオリジナルのデータをバックアップし、シームレスにスキャンを実行する時に役立ちます。オリジナルデータのクラウドバックアップは、Medit Scan for Clinicsで取得されたデータにのみ適用されます。	
クイックスキャン	フォーム情報を入力する必要なく、下記のスキャン工程をMedit Scan for Clinicsに自動的に表示させるかどうかを選択します。 - 上顎施術前 - 下顎施術前 - 顔面スキャン	
表示オプション	高度なレンダリング	チェックを入れると、3Dモデルはより鮮明でリアルなレンダリングで表示されます。
	色テクスチャの調整	3Dモデルの明るさを調整します。 * 色の結果は、他のソフトウェアで同じデータを開いた場合、Medit Linkとは少し異なって見える可能性があります。


Medit ユーザー 体験 向上 プログ ラム

Meditユーザー体験向上プログラムにご参加ください。

- 当社の製品とサービスの向上のために回収した情報を使用します。
- 個人を特定するような情報は回収しません。

ストレージ管理

ローカルおよびクラウドストレージのスペースを確認および管理します。

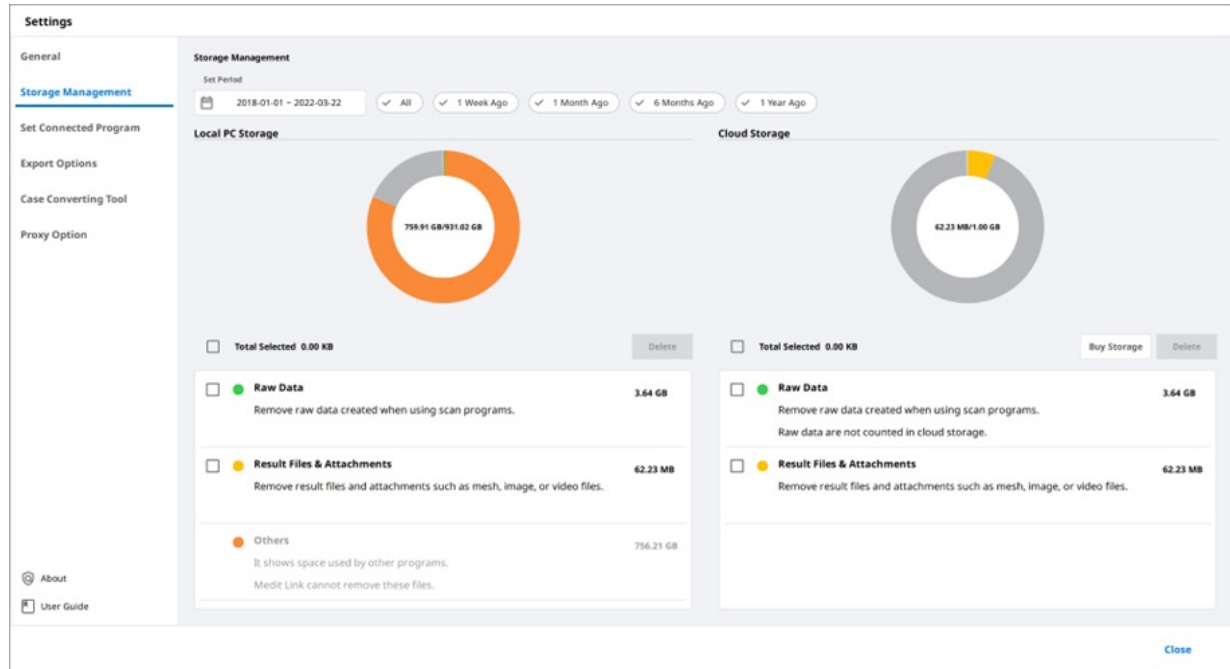

期間の設定

以下の期間設定内で、作成したデータを削除するために特定の期間を設定します。

- すべて: すべてのファイルを表示します。
- 1週間前: 作成後1週間を経過したファイルを表示します。
- 1か月前: 作成後1か月を経過したファイルを表示します。
- 6か月前: 作成後6か月を経過したファイルを表示します。
- 1年前: 作成後1年を経過したファイルを表示します。

ローカルストレージ

PCストレージスペースを管理します。

RAWデータ	PCから選択したRAWデータを削除します。 すでにRAWデータがクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。
結果&添付ファイル	PCからメッシュ画像や動画などの結果ファイルや添付ファイルを削除します。 これらのファイルがすでにクラウドにアップロードされている場合、いつでもダウンロードして使用することができます。

その他	システムおよびその他のプログラムを運用するために使用されるファイルを表示します。使用しているPCのストレージを表示します。Medit Linkからこれらのファイルを削除することはできません。
削除	PCから選択したファイルを削除します。


クラウドストレージ

クラウドストレージのスペースを管理します。

RAWデータ	RAWデータはクラウドストレージの場所を取らないため、円グラフに含まれません。患者の個人情報を守るために削除するなど、必要があれば、こちらからRAWデータを管理できます。
結果&添付ファイル	結果および添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
ストレージの購入	スタンダードプランの場合、クラウドストレージを拡張するにはプレミアムプランに登録してください。
削除	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、ストレージ容量を空けます。

接続プログラムを設定する

Medit Linkでの統合をサポートするプログラムを管理します。

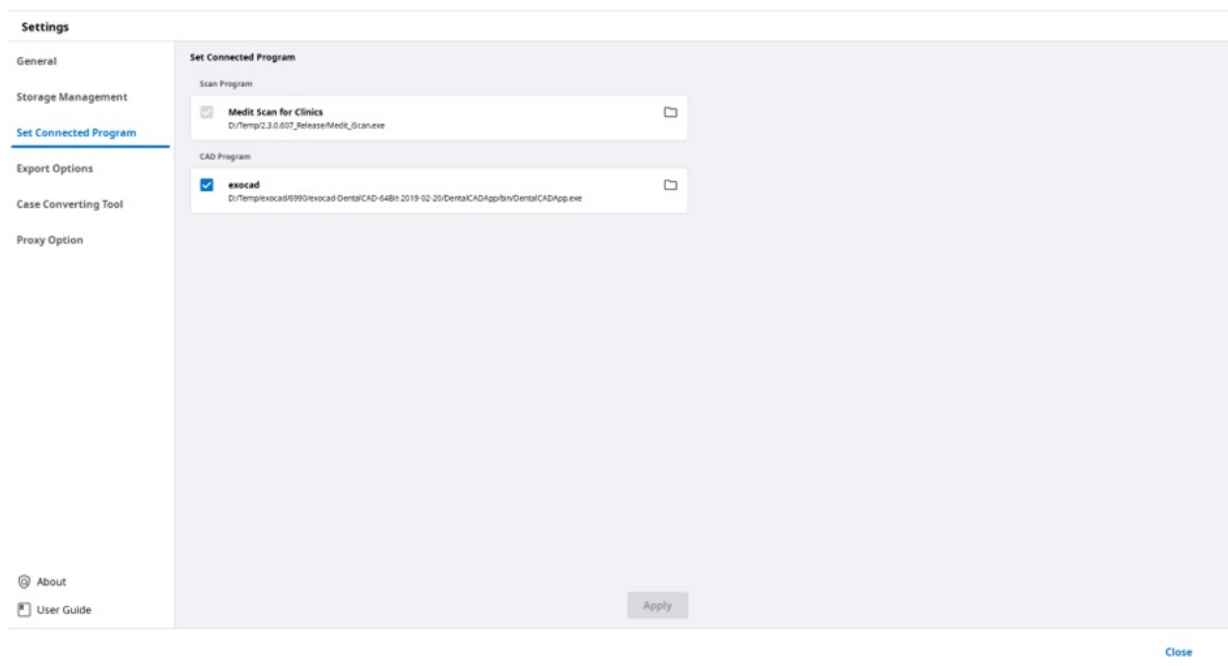

以下のプログラムを接続できます。

	歯科医院アカウント	技工所アカウント
スキャンプログラム	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CADプログラム	exocad	exocad

■注意事項

以下のサービスは、MacOS向けMedit Linkでは利用できません。

- Medit Scan for Labs
- exocad

エクスポートオプション


Medit Linkからファイルをエクスポートする方法を設定します。

CADタイプ	設計用に使用するCADプログラムを選択します。 プログラムは追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいた結果を調整します。
ファイルのエクスポート先	結果の保存先を指定します。
メッシュ形式	最終のメッシュファイルの形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
圧縮と結合	ファイルの圧縮: すべての結果を一つのファイルに圧縮します。 個々のメッシュデータの結合: 上顎または下顎のすべての結果を一つのファイルに結合します。いくつかのプログラムを使用して複数のファイルでインポートし、作業できない場合、それらを一つに結合し、それらのプログラムで作業ができます。
同じフォルダまたはファイルがすでに存在する場合のオプション	対象の場所に同じフォルダ名またはファイル名が存在する場合、ケースのデフォルト操作を選択します。 - エクスポート時に常に確認する。 - 新規ファイルをエクスポートし、既存のファイルに上書きする。現在保存されているファイルは失われる。 - フォルダを作成してファイルをエクスポートする。
フォルダ名のルール	ファイルのエクスポート時のフォルダ名作成のルールを定義します。 設定されたルールは、フォルダ名に提供され、エクスポートされたファイルは作成されたフォルダに保存されます。 下記の情報はルールを設定されるために使用できます。 - 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID - 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID

ファイル名のルール	エクスポートされたファイル名のルールを定義します。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 ● 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID ● 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID
-----------	--


ケース変換ツール

異なるアカウント間でケースを移動します。

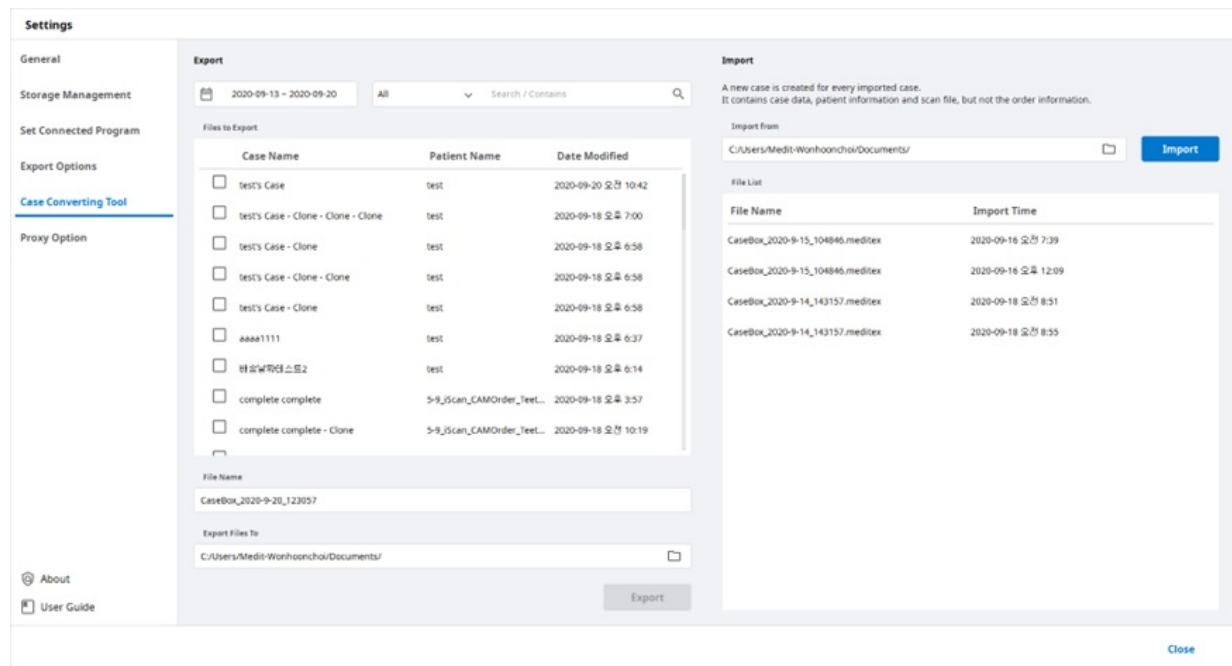


ケース変換ツールの使用方法


1. Medit Linkを開き、「設定」をクリックします。

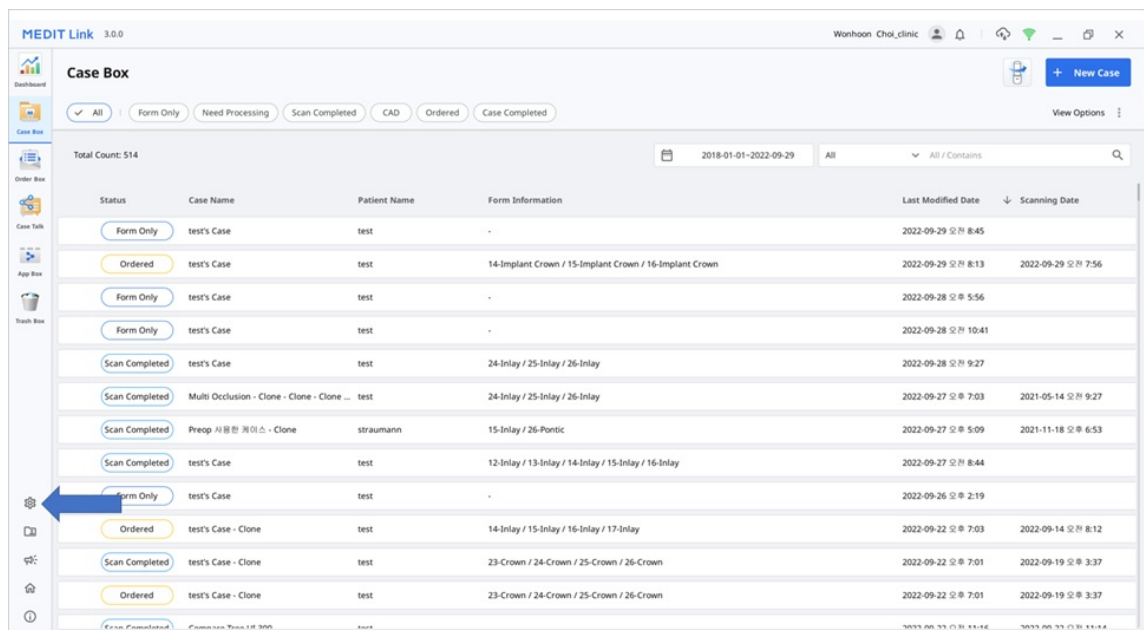

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

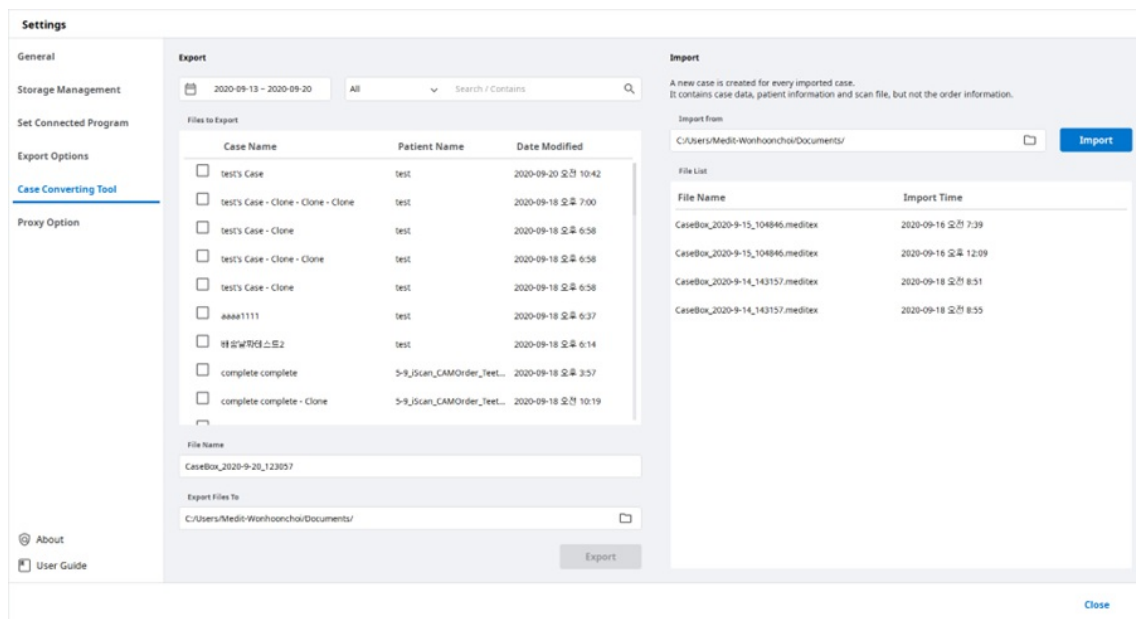

3. インポートセクションで、フォルダアイコンをクリックし、PCでインポートする.meditexファイルを探します。
4. 「インポート」ボタンをクリックし、以下のファイルリストのインポート済みファイルを確認します。

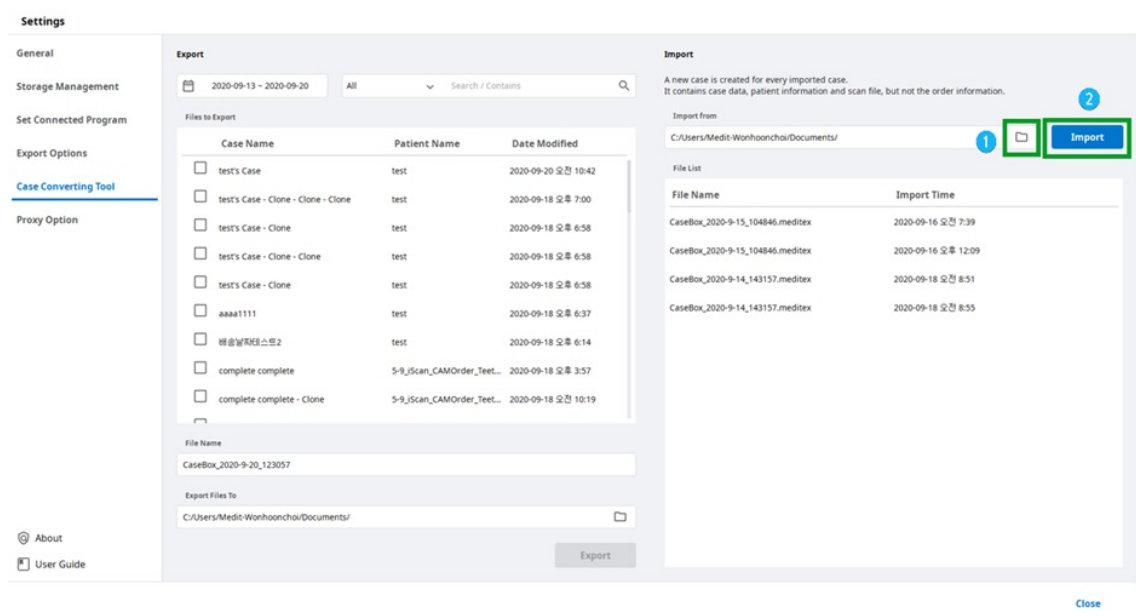

5. インポートしたケースは、Case Box(歯科医院アカウント)またはWork Box(技工所アカウント)にも表示されます。

プロキシオプション

いくつかの限定的なネットワーク環境では、ネットワーク設定を変更できます。

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

About

User Guide

Please apply the changes.

Apply

Close

Medit Linkについて

Medit Linkに関する詳細情報を表示します。

About

MEDIT Link

v 2.4.0 Build 152

Dev Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright (c) Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

ユーザーガイド

Medit Linkのユーザーガイドを取得します。

ユーザーガイドを開くにはインターネット接続が必要です。

ファイルビューアー

ファイルビューアーは、Medit Linkにリンクしているプログラムやユーザーが添付したデータから取得したデータを含む、さまざまなデータをグループ化および表示します。


データの表示/非表示、不透明度の調整、データの削除等の基本的な管理機能を提供します。

以下の形式のファイルプレビューをサポートしています。

- 3Dデータ: STL、OBJ、PLY
- 2D画像: PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 動画ファイル: MKV、MP4、AVI、WMV

データツリー

データツリーにあるケースのすべてのデータをグループ化および表示できます。データツリーのデータの表示/非表示、透明度の調整、データの削除もできます。

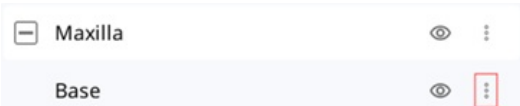	表示/非表示	データを表示または非表示にできます。
	不透明度	データツリー上のデータの一つをクリックすると、スライダーが表示されます。スライダーを動かして表示データの不透明度を調整できます。 
	詳細	詳細アイコンをクリックすると、追加で使用可能な機能が表示されます。  • このみを表示: 対応するデータのみを表示し、その他のすべてのデータを非表示にします。 • 非表示: データを非表示にします。 • 複製: データをコピーし、添付されているグループに追加します。 • エクスポート: 選択したファイルをエクスポートします。 • 名前の変更: データ名を変更します。 • 削除: データを削除します。





❗注意事項

オンライン時にデータ名の変更ができます。

模型コントロールツール

3D模型のコントロール

	パン	模型を移動します。
	回転	模型を回転させます。

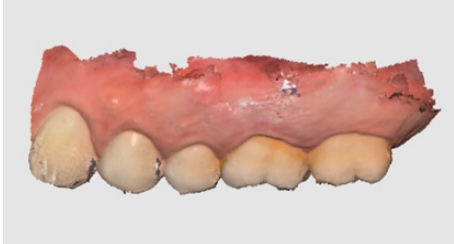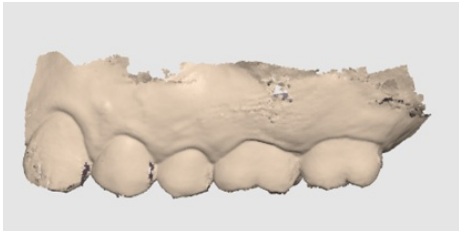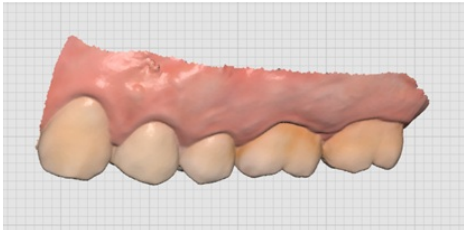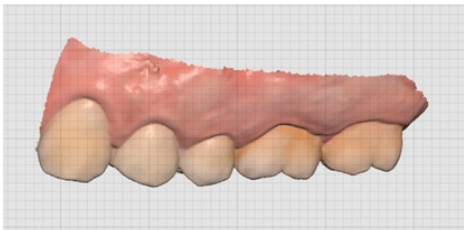	拡大/縮小		模型上で拡大/縮小します。
	ズームフィット		画面中央に模型を配置します。
	模型表示モード	テクスチャオン	実際のテクスチャの色でデータを表示します。 
		テクスチャオフ	データを単色で表示します。 
	グリッド設定(mm)	グリッドオン	背景にグリッドを表示します。 
		オーバーレイオン	模型上にグリッドをオーバーレイします。 
		グリッドオフ	グリッドを非表示にします。

2D画像コントロール


	次/前の画像	画像間で移動します。
	編集	画像を編集します。
	画面の切り離し/貼付け	画像画面を切り離し、希望する位置に画像を調整できます。画面のサイズを変更できます。 画面がオリジナルの場所に戻ると、デフォルトサイズになります。

機能ツール

画像撮影とメモ


現在の画面を2D画像で撮影し、そこに描いたり、メモを追加します。

メモ付きのファイルを保存し、参照として送信できます。

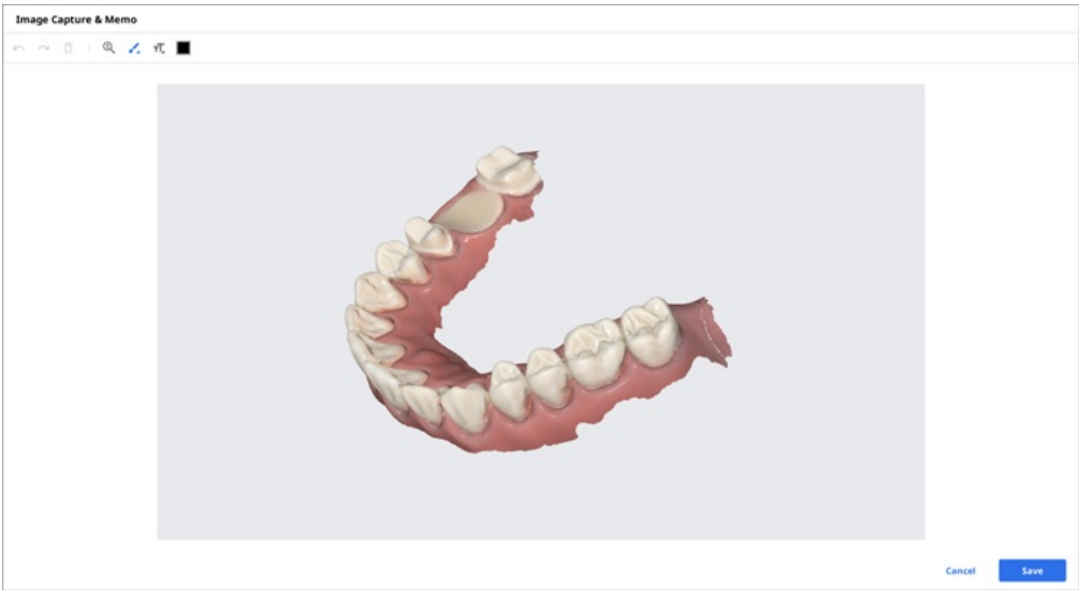

矯正撮影


現在の視線方向および現在の視線方向から上/下/左/右の画像を撮影します。

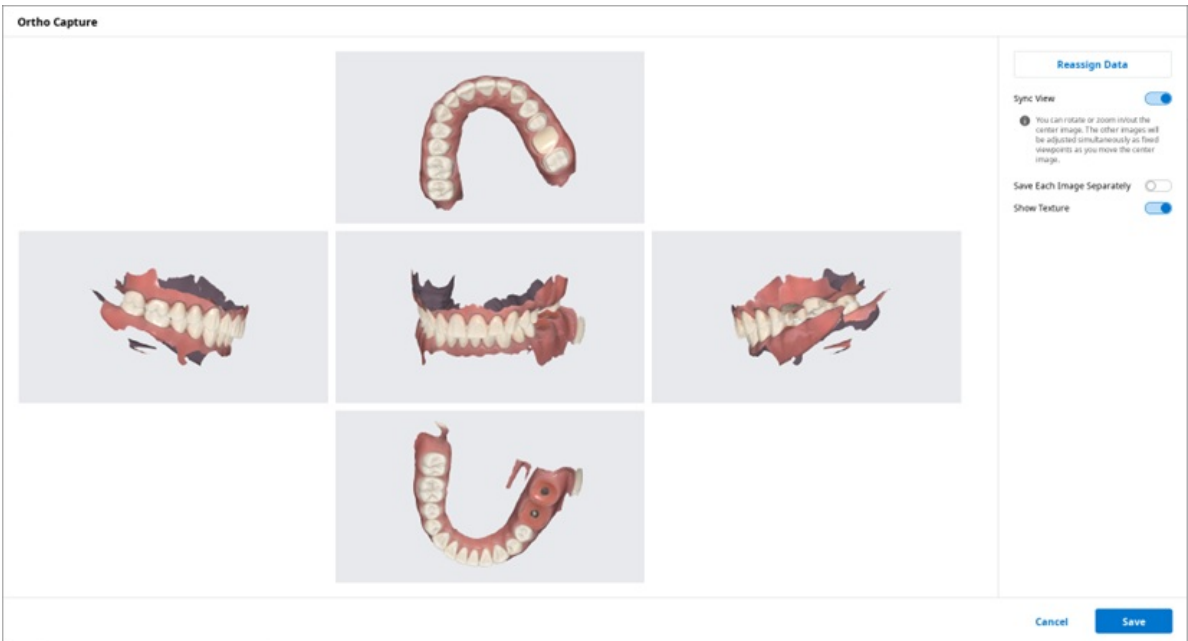

ビューの同期	オンの場合、中央の画像を回転または拡大/縮小できます。その他の画像は、中央の画像を動かしながら固定した視点として同時に調整されます。 オフの場合、すべての画像を個別にパン、回転、または拡大/縮小できます。
各画像を個別に保存	各画像を高解像度で保存します。
テクスチャを表示	模型のテクスチャをオン／オフにします。

データの再割り当て


データの再割り当て機能で上顎/下顎のデータを変更します。変更したデータを使用して、矯正撮影の結果画像を作成し、活用できます。

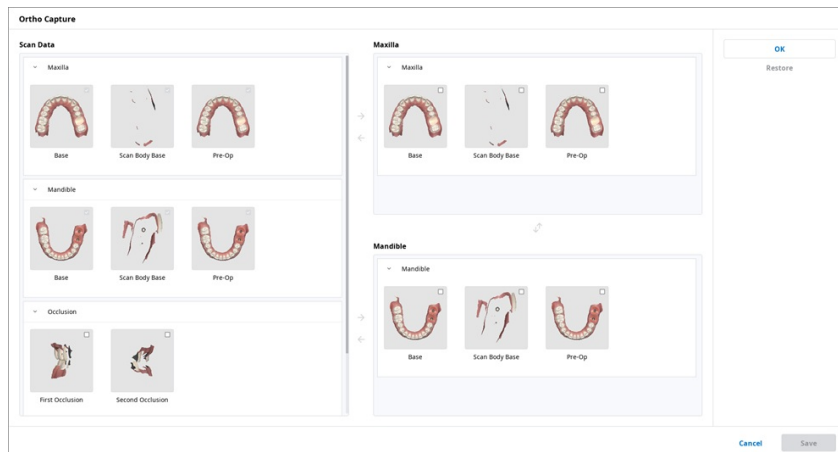

- スキャンデータ: ケースのスキャンデータをすべて表示します。
- 上顎: 上顎の選択したデータが表示されます。
- 下顎: 下顎の選択したデータが表示されます。


歯牙充填

3Dメッシュデータで歯牙を充填します。

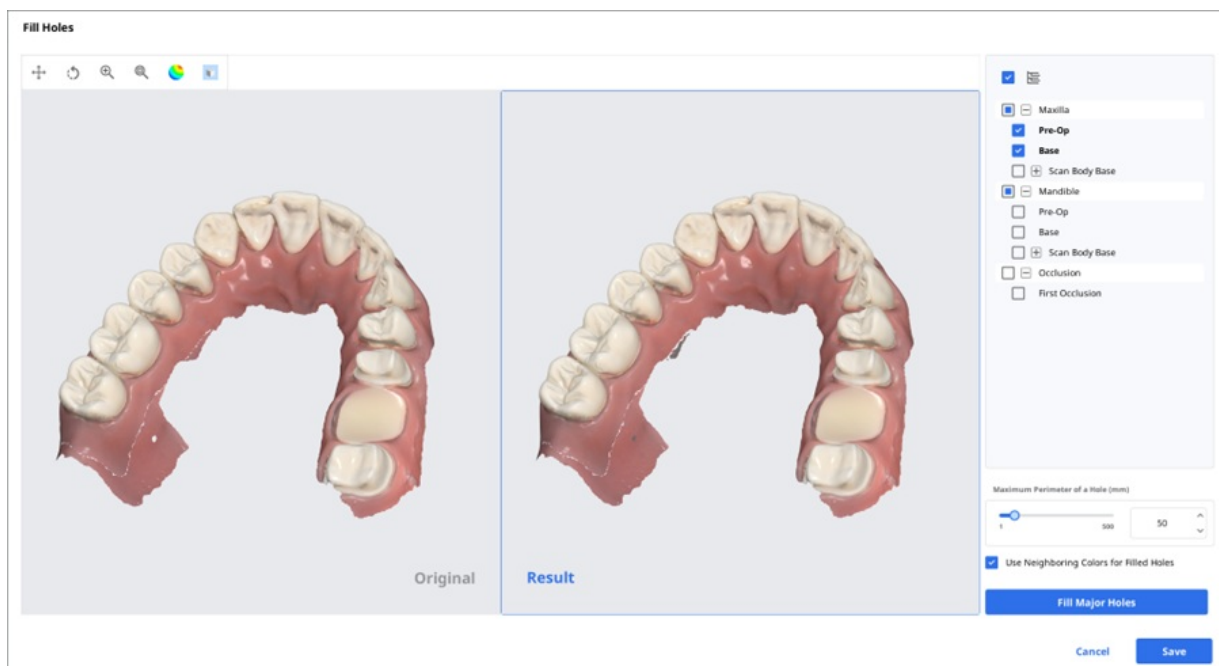

トリミング


トリミングでは、データを編集するさまざまなツールを提供しています。

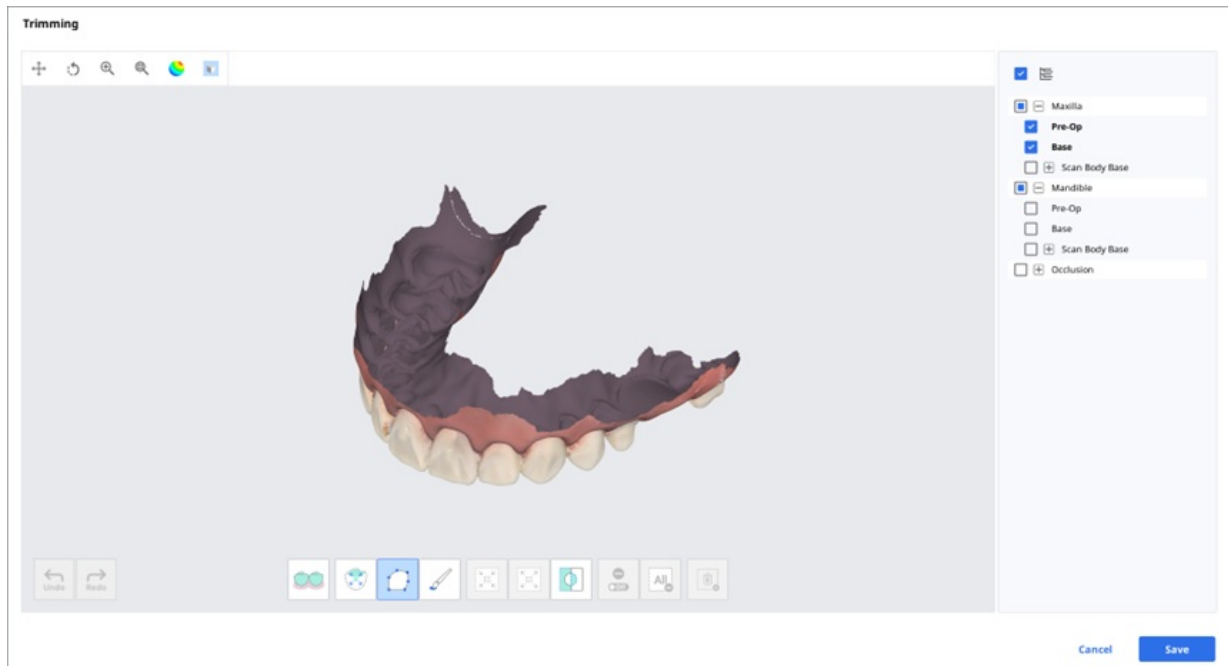

選択した3Dメッシュデータは、画面下部にあるさまざまなツールを使用して編集できます。

選択		スマートティース選択	歯肉部分以外の顎/アーチの歯すべてを自動選択します。 ■注意事項 この機能は、「GPUを使用」オプションをオンにしてMedit Scan for Clinicsによって取得されたスキャンデータでのみ使用できます。
		スマートシングルトゥースセレクション	歯肉の部分を省いて、1本の歯の領域を自動選択します。マウスをクリックして押し、歯の上にドラッグします。
		多角形選択	画面上で描いた多角形内のすべてのものを選択します。
		ブラシ選択	画面上に手書きで描かれた軌道上のすべてのものを選択します。前面のみが選択されます。ブラシは異なる3つのサイズがあります。
選択領域の調整		選択領域の縮小	ボタンを押すたびに選択領域が縮小されます。
		選択領域の拡大	ボタンを押すたびに、選択領域が拡大されます。
		選択領域の反転	選択領域を反転します。
選択解除		選択/選択解除	オンの場合、様々なツールを使い、選択を解除します。
		すべての選択をクリア	すべての選択領域を解除します。
		選択領域の削除	選択領域からデータを削除します。

1. 領域選択ツールでトリミングする領域を選択します。

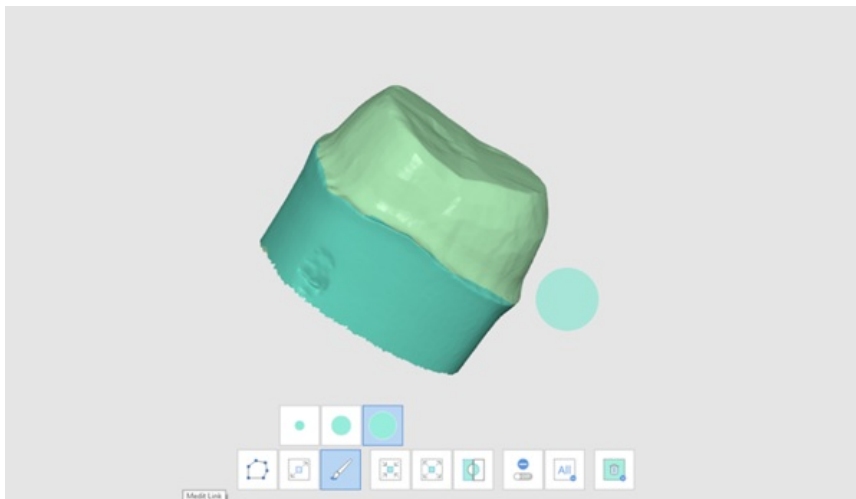


■注意事項


多角形トリミングツールは画面に描画された多角形内のすべてのものを選択し、ブラシトリミングツールは前面の顔面データのみを選択します。

2. 以下の3つのツールを使用して選択を反転、縮小または拡大できます。


◦ 選択領域の反転

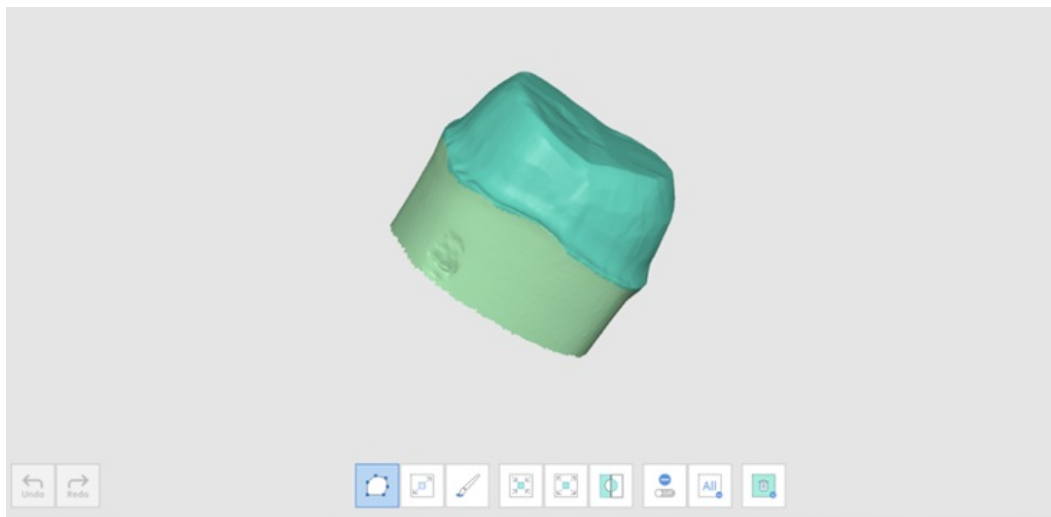

◦ 選択領域の縮小

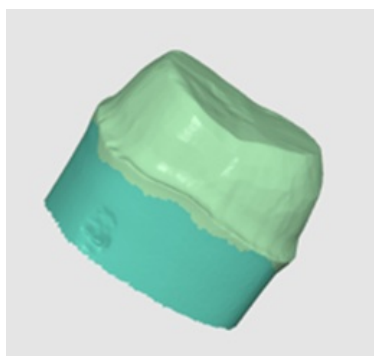


◦ 選択領域の拡大

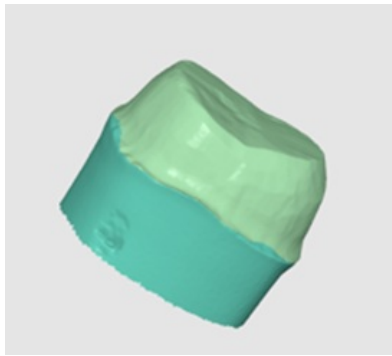

3. 選択領域削除ツールを使用して選択領域の選択解除ができます。




咬合整列の最適化

咬合整列を最適化します。対象データを選択し、咬合整列を調整できます。

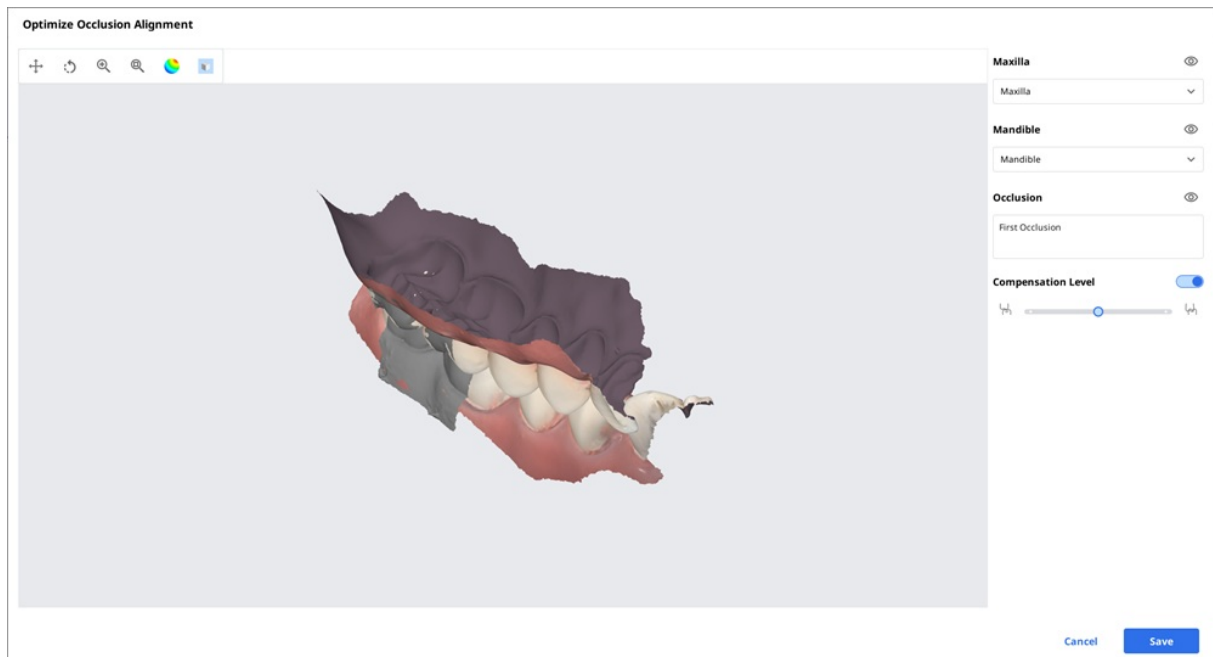

補正レベル

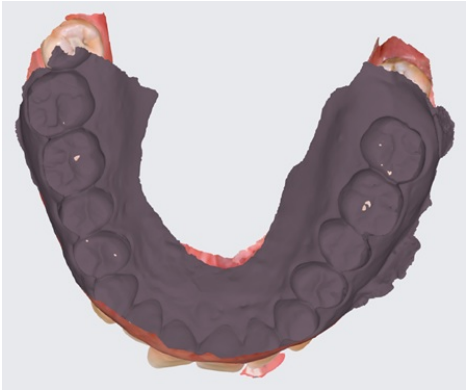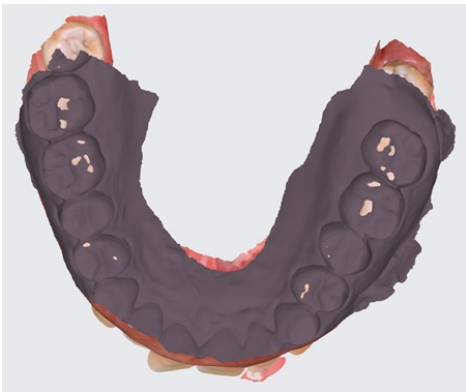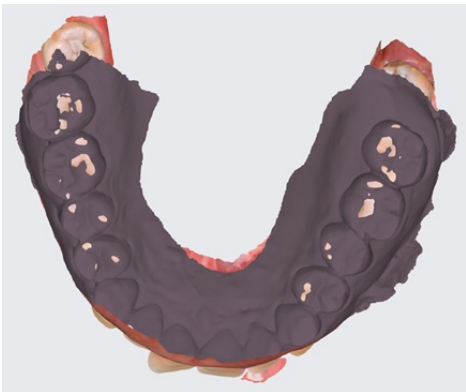

中	Compensation Level 	
高	Compensation Level 	
オフ	Compensation Level 	

下顎運動

Medit Scan for Clinicsで録画された下顎運動を再生し、上下の歯列間の動的な咬合の当たり具合を確認できます。



	自由運動	下顎の自由運動の録画を再生します。
	左水平運動	下顎の左への運動の録画を再生します。
	右水平運動	下顎の右への運動の録画を再生します。
	前方運動	下顎の前方運動の録画を再生します。

ファイルビューアーの複数の咬合データの管理

Meditスキャンアプリケーションから複数の咬合データ結果を取得できます。

Medit Linkは、「ファイルビューアー」を通しての結果を管理できる機能を提供しています。

複数の結果の管理方法


Medit Scan for Clinicsから複数の咬合結果を取得時に、Medit Linkは結果を選択できるオプションを提供しています。

結果リストは、名前別にリストアップされ、一つの項目を選択できます。

選択したモデルは、「データツリー」および「モデル表示領域」で表示されます。



リストを折りたたみ、矢印アイコンを使用して項目を変更できます。

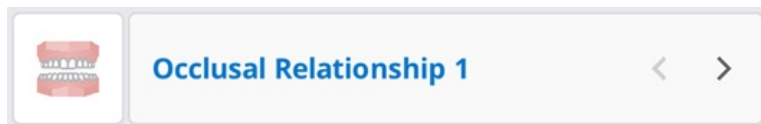

表示オプション

表示オプションを変更して、Case Box/Work Box/In Box/Order Box内のケースリストのレイアウトをカスタマイズできます。

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

ステータスフィルター

ケースのステータスを表す各フィルターを表示または非表示にします。非表示ステータスフィルターでは、Case Box/Work Box/In Box/Order Box中で画面に表示されません。

表示フィルターを使うと必要なケースを容易に探すことができます。

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

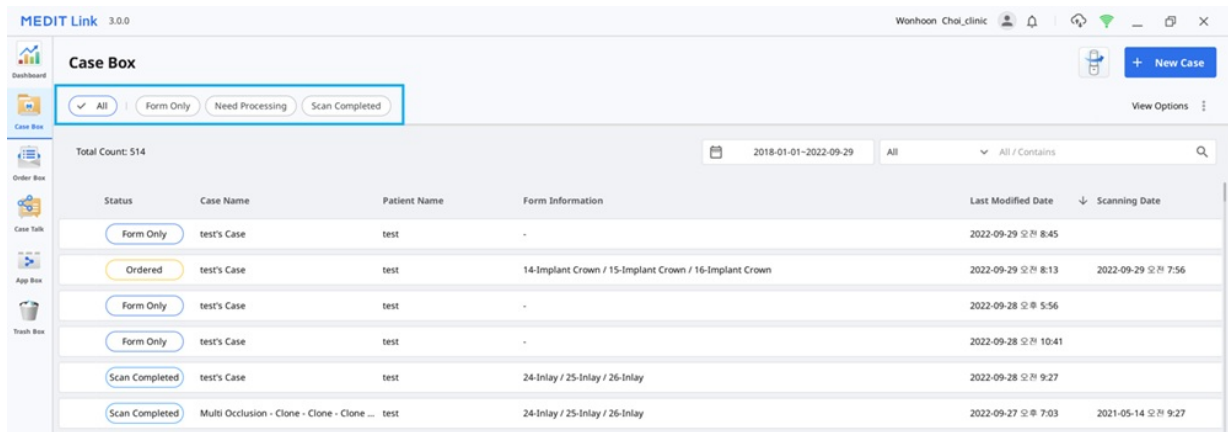

- 表示したいステータスをクリックして、そのステータスのケースのみを表示できます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

各Boxで使用可能なフィルタリング:

Case Box	すべて/フォームのみ/処理要/スキャン完了済み/CAD/注文済み/完了ケース
Order Box	すべて/保留中/キャンセル/拒否/承認済み/発送済み/完了ケース
In Box	すべて/保留中/キャンセル/拒否/承認済み/準備完了/発送済み/完了ケース
Work Box	すべて/フォームのみ/処理要/スキャン完了済み/CAD/完了
Trash Box	サポートしていません

表の項目

Case Box/Work Box/In Box/Order Box中のケースリストに表示する項目を選択します。ユーザーが見やすいように、リスト表示の表の項目順を変更または表の幅を調整できます。

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- :: Status
- :: Case Name
- :: Patient Name
- :: Form Information
- :: Last Modified Date
- :: Scanning Date

Hidden

Show All

- :: Birth Date
- :: Order Date
- :: Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box



Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

表示タイプ


Case Boxでの表示タイプをギャラリー表示とリスト表示間で変更します。

ギャラリー表示

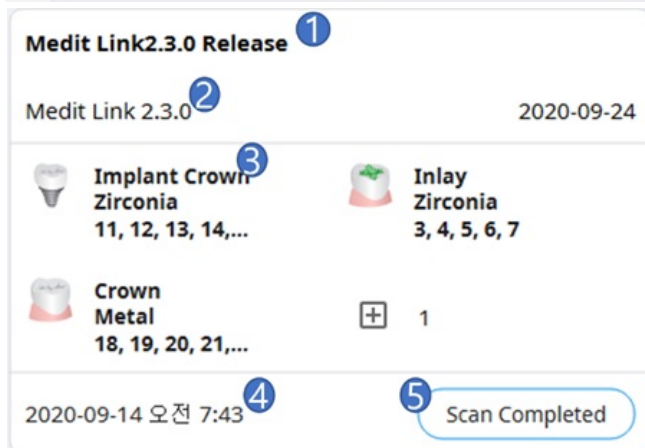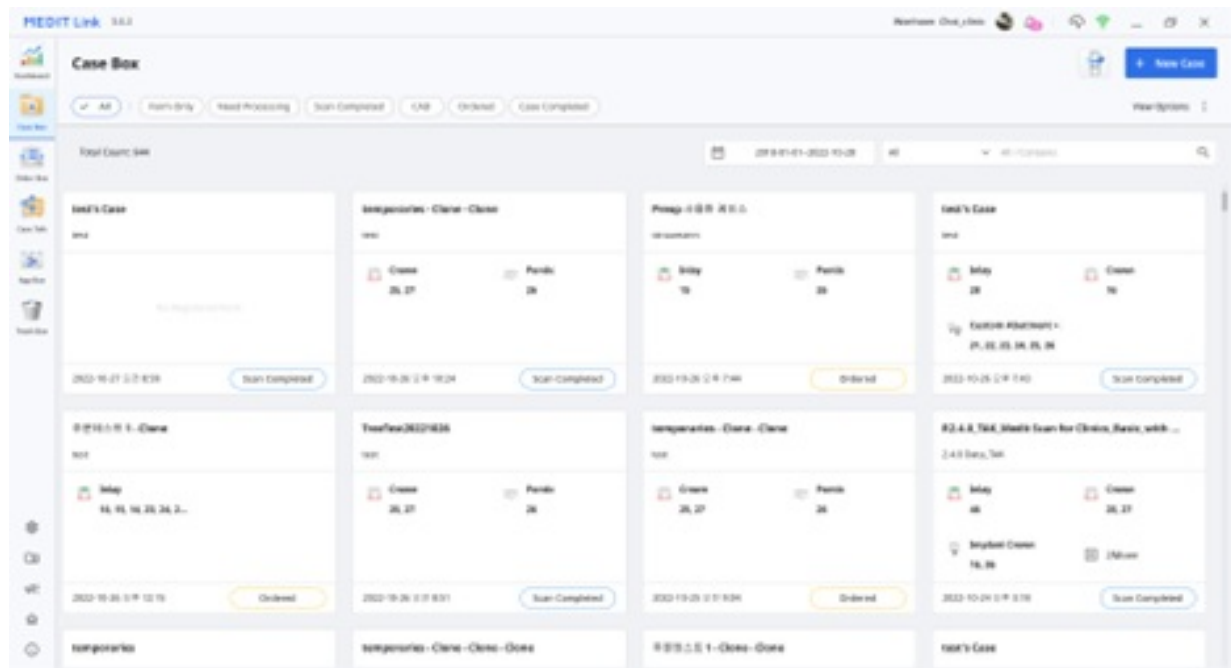

1	ケース名
2	患者名および生年月日
3	フォーム情報
4	スキャン日
5	ケースステータス

リスト表示

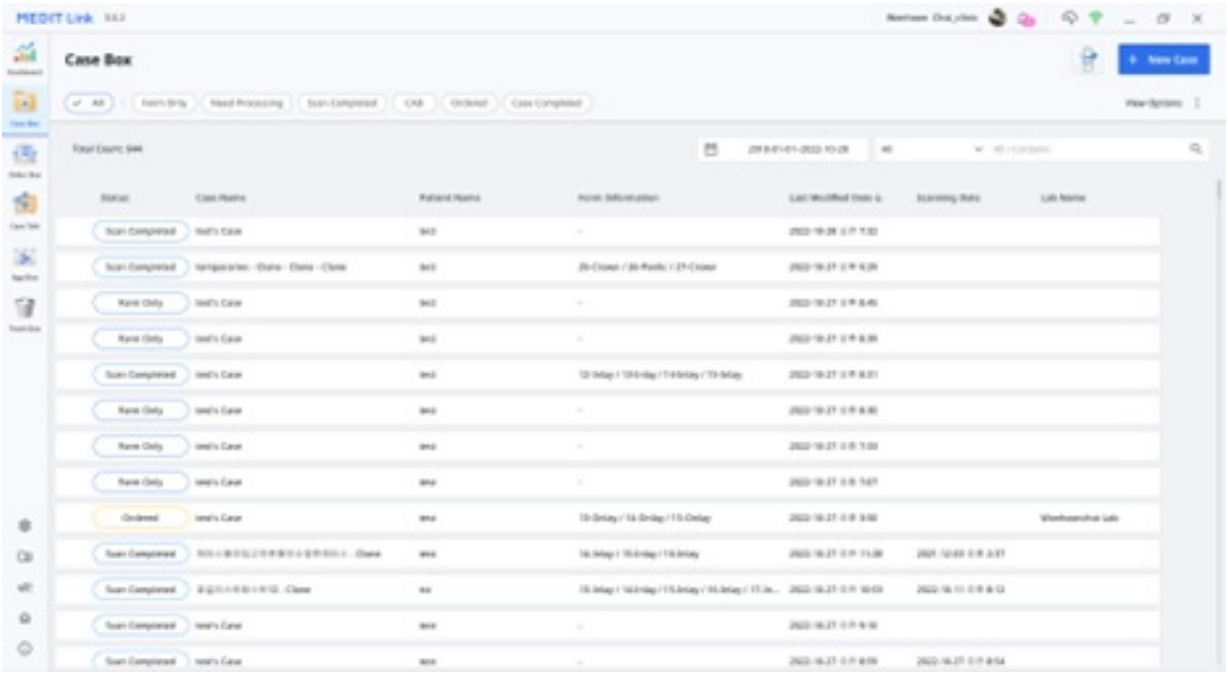

グループ化

グループ化オプションを選択し、選択したオプションでリスト内のケースを分類し、並び替えます。

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone ▾

☒ None

☐ Patient Name

☐ Order Date

☐ Scanning Date

SortingLast Modified Date >

各Boxでは、以下のグループ化オプションが利用できます。

Box	グループ化
Case Box	なし
	患者名
	スキャン日
	注文日
Order	なし
	スキャン日

Box	注文日
	配送希望日
In Box	なし
	注文日
	配送希望日
Work Box	なし
	配送希望日

❗注意事項

Trash BoxおよびCase Talkでは、グループ化および並び替えオプションは利用できません。

並び替え

並び替えオプションを選択して、選択したオプションに従ってリスト内のケース順を変更します。

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Sorting Last Modified Date ▾

☐ Patient Name
☒ Last Modified Date
☐ Scanning Date
☐ Order Date
☐ Lab Name

各Boxでは、以下の並び替えオプションが利用できます。

Box	グループ化	並び替え
Case Box	なし	患者名/最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	患者名	最終変更日/スキャン日/注文日/技工所名
	スキャン日	患者名/最終変更日/注文日/技工所名
	注文日	患者名/最終変更日/スキャン日/技工所名
Order Box	なし	患者名/スキャン日/注文日/納品希望日/技工所名
	スキャン日	患者名/注文日/配送希望日/技工所名
	注文日	患者名/スキャン日/納品希望日/技工所名
	納品希望日	患者名/スキャン日/注文日/技工所名
	なし	患者名/注文日/納品希望日/歯科医院名

In Box	注文日	患者名/スキャン日/納品希望日/歯科医院名
	納品希望日	患者名/注文日/歯科医院名
Work Box	なし	患者名/最終変更日/納品希望日/歯科医院名
	納品希望日	患者名/最終変更日/歯科医院名

■注意事項

Trash BoxおよびCase Talkでは、グループ化および並び替えオプションは利用できません。

フィルタリングおよび検索

日付別フィルタリング

設定期間内での最終修正日別でケースをフィルタリングし、表示します。

1. 期間フィルターをクリックします。

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. リストから期間を選択します。

Last 30 Days ▼

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- すべて: すべてのケースを表示します。
- カスタム範囲: 開始日と終了日を指定して、期間内でのケースの最終修正日別に表示します。
- 今日: 今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日: 昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間: 今日を除く過去7日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間: 今日を除く過去30日間が最終修正日のケースを表示します。
- 今月: 今月が最終修正日のケースを表示します。
- 先月: 先月が最終修正日のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。

詳細検索機能

検索機能を利用して、必要な情報を迅速に検索します。

All ▼ Search / Contains 

以下の検索条件が各Boxで利用できます。

Case Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、フォーム情報、技工所名
Order Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、技工所名、注文ID
In Box	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、注文ID
Work Box	すべて、ケース名、患者名、フォーム情報、歯科医院名、注文ID
Case Talk	Case Talk名 (含む)、患者名 (等しい)
Trash Box(歯科医院)	すべて、ケース名、患者名、技工所名、削除者
Trash Box(技工所)	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、削除者

検索条件を選択し、「含む」および「等しい」条件指定で選択できます。

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

ケースの作成／編集／複製／削除

ケースの作成

Case Box(歯科医院)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

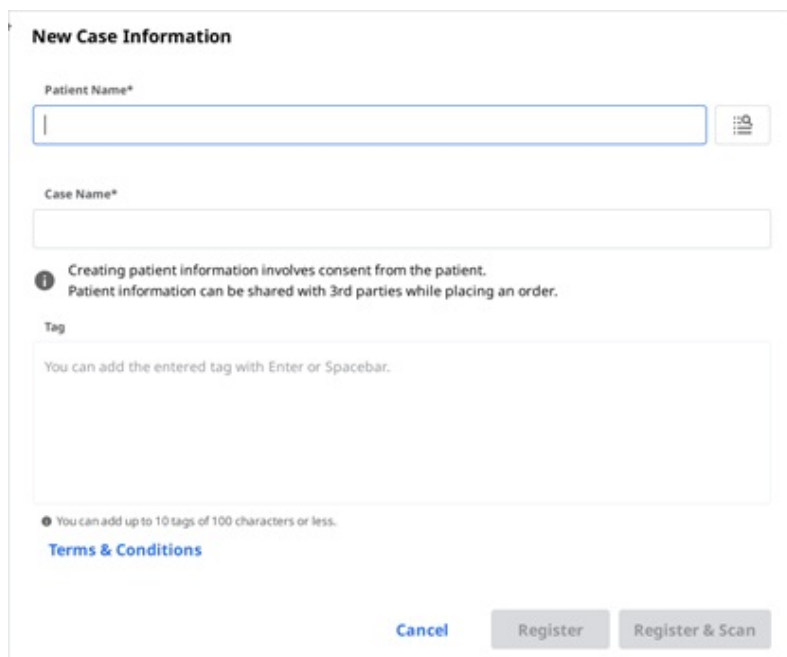


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a search icon button to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less.", a link for "Terms & Conditions", and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. 患者名やケース名などの基本情報を入力します。
 - 患者リストにない名前を入力する場合、新規患者として追加されます。
 - 患者リストにある名前を入力する場合、リストから名前を選択できます。
 - 既存の患者のケースを登録する場合、患者リストアイコンをクリックし、既存の患者を選択します。



- 患者リストダイアログで、新規患者を登録または既存の患者に関する情報を編集できます。

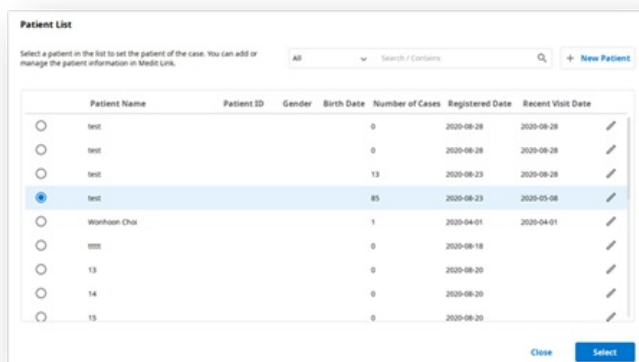

The "Patient List" dialog shows a table of existing patients. The first four rows have a radio button for selection. The fifth row is highlighted with a blue background.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worham Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Buttons at the bottom: "Close" and "Select".

3. ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 「登録&スキャン」をクリックし、ケース登録を完了し、すぐにスキャンに進みます。
 - 登録: メインページにリダイレクトされます。これは複数のケースを登録する場合に便利です。
 - 登録&スキャン: フォームタブに移動し、ケースのフォーム情報を登録します。

Work Box(技工所)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a form titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Register".

2. 歯科医院名を入力または選択します。
3. 患者名とケース名を入力します。ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. 作業の完了日を考慮して納品予定日を入力します。
5. ケースを登録後、メインページにリダイレクトされます。

ケースの編集

Case Box(歯科医院)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

The screenshot shows a form titled "Edit Case Information". It contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field containing "Test Occlusion". To its right is a search icon.
- A green checkmark message: "Test Occlusion 00010101" is selected.
- Case Name***: A text input field containing "mandibular movement - Clone - Clone".
- An information icon with a note: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- A link: "Terms & Conditions".
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Apply".

2. 「検索」アイコンをクリックして、患者名を変更します。直接編集できないことにご注意ください。その代わり、現在の名前を入れ替えたい患者名を探し、リストから患者情報を編集できます。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 現在の名前を置き換えたい患者名を確認します。
4. 新規患者を作成するために、「新規患者」ボタンを押します。
5. 「編集」ボタンを使用して、患者に関する登録情報を変更します。
6. 「適用」をクリックして、プロセスを終了します。

Work Box(技工所)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 編集完了後に「適用」をクリックします。

■注意事項

In Boxの注文を通して受領したケースの情報を編集することはできません。


ケースの複製

Case Box(歯科医院)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. 新規ケースに複製したい情報の種類を求められます。

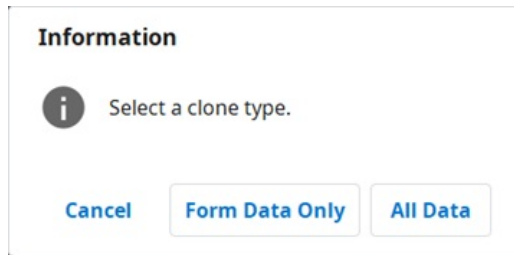

Information

 Select a clone type.

[Cancel](#) [Form Data Only](#) [All Data](#)

3. フォーム情報だけ、またはすべてのデータを複製するかどうかを選択します。
4. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。

Work Box(技工所)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. すべてのデータを複製して、新規ケースを作成します。
3. 複製が完了したら、「[ケース名] – 複製」名のケースが作成されます。


ケースの削除

ケースの削除(歯科医院および技工所)

1. 「削除」アイコンをクリックします。



2. 「OK」をクリックして、ケースを削除します。

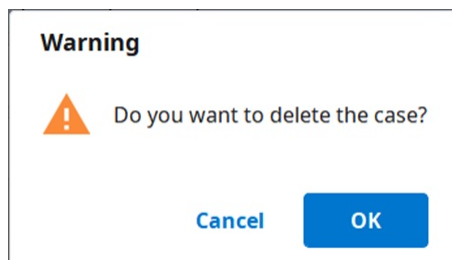

Warning

 Do you want to delete the case?

[Cancel](#) [OK](#)

3. 削除されたケースは、Trash Boxに移動し、必要があれば取り戻せます。

フォーム情報

接続しているプログラムおよび治療タイプに基づきフォーム情報を入力できます。

入力する情報は、スキャンまたはCADプログラムでの作業および注文のための基本情報として使用されます。

Case Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 歯または顎/アーチでの治療情報のどちらを入力するか選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シードを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
3. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

CADタブの入力

1. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
2. 歯番/顎・アーチ/ダイ番号を選択します。
3. 詳細なオプションおよびCADオペレーションのための設定を定義します。
4. 「OK」をクリックして、設定を保存します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
5. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

Work Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 使用するスキャンプログラムを選択します。
2. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
3. 選択したスキャンプログラムにより方法が異なる可能性があります。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
歯	O	O
顎/アーチ	O	O
フレキシブルマルチダイ	X	O
マルチダイ	X	O

4. スキャンプロセス用の歯、顎/アーチ、またはダイ番号を選択します。
5. タイプ – 方法 – 材料 – シードを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、自動的にリストに登録されます。
6. 「保存」をクリックし、登録を保存します。


CADタブの入力

1. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します：歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
2. 歯番/顎・アーチ/ダイ番号を選択します。

3. 詳細なオプションおよびCADオペレーションのための設定を定義します。
4. 「OK」をクリックして、設定を保存します。
 - 選択した情報は、リストに自動的に登録されます。
5. 「保存」をクリックします。

歯をブリッジにつなぐ

同じ材料が複数の隣在歯に適用されている場合には、複数の歯をブリッジにつなげることができます。選択した歯のそばにあるブリッジアイコンをクリックし、歯をつなげるまたはつなげないを選択できます。

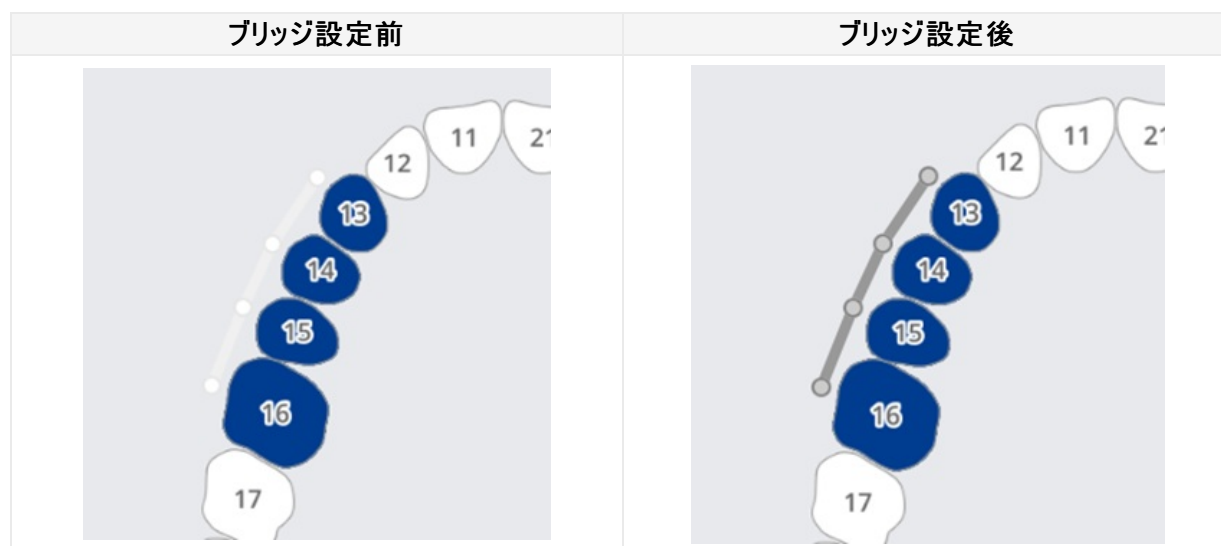

スキャンオプションの設定

作業しているプログラムにより、さまざまなスキャンオプションが提供されます。

選択したスキャンオプションは各スキャンプログラムに渡されます。

Medit Scan for Labs

一般オプション

	隣在歯	支台歯と隣在歯をマーキングし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	対合歯	拮抗歯を自動的にマークし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	咬合器	スキャンプログラムで咬合器を選択するためのオプションを表示します。
	移動マーカー	スキャンプログラム中の「顎の運動」のスキャン方法を使用できるようにします。

歯別のオプション

	スキャンボディ	スキャンプログラムでスキャンボディをスキャンするための方法を設定できます。
	施術前スキャン	スキャンプログラムで施術前模型をスキャンするための方法を設定できます。
	ワックスアップスキャン	スキャンプログラムでワックスアップをスキャンするための方法を設定できます。

お気に入りに追加

製品をお気に入りに登録すると、素早く製品を選択できます。

登録済みお気に入りのリストはテンプレートとして管理され、エクスポートおよびインポート機能を通して共有できます。

お気に入りに追加

1. 歯番を選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - 。タイプ – 方法 – 材料 – シェードは、すべてが選択されていなくても、お気に入りにして登録できます。
3. 「星」アイコンをクリックします。

4. 選択したパラメータ(歯番を除く)の組み合わせは、お気に入りの検索リストに掲載されます。

お気に入りテンプレートの管理

異なるタイプのテンプレートを登録、管理、共有できます。

追加	新規テンプレートを追加します。
名前の変更	現在のテンプレート名を変更します。
削除	現在のテンプレートを削除します。
エクスポート	現在のテンプレートをファイルにエクスポートします。
インポート	テンプレートファイルをインポートします。

スキャン/CADでの作業

スキャン処理

入力した情報に基づき、スキャンを進めます。

1. 治療情報を入力/保存し、必要なスキャンオプションを選択します。
2. 画面の右上隅の「スキャン」ボタンをクリックします。

CAD処理

Medit Linkはexocadと統合しています。

CAD	治療情報の登録	治療情報の確認	CAD実行の指示	Medit Linkに CAD結果をイン ポート
exocad	O	O	O	O

1. 設定>接続プログラムの設定で、リストから選択のCADプログラムをリンクできます。
2. CADタブの作業情報および設計オプションを入力/保存します。
3. 画面右上隅の「CAD」をクリックします。
4. リンクしたCADプログラムが実行され、データは自動的に送信されます。
5. CAD実行後に結果を保存します。

❗注意事項

MacOS用Medit Linkは、CADでリンクする機能をサポートしていません。

結果ファイルの取得

スキャン結果ファイルのエクスポート

注文を通してパートナーと結果を共有することに加え、Medit Linkではエクスポート機能を使用して希望するファイル形式で結果を保存することもできます。


ファイルのエクスポート先	結果の保存場所を指定します。
フォルダ名	システムは、新規フォルダを作成し、そこにすべての結果を保存します。 デフォルトのフォルダ名は名前ルールによって設定されます。直接フォルダ名を変更できます。 設定>エクスポートオプション>フォルダ名のルールから名前ルールを定義できます。
ファイル名	結果のファイル名を設定します。名前ルールでデフォルトのファイル名は設定されます。直接フォルダ名を変更できます。 設定>エクスポートオプション>フォルダ名のルールから名前ルールを定義できます。
CADタイプ	設計プログラムに使用するCADプログラムを選択します。 Medit Linkは、追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいたファイルを調整します。
メッシュ形式	メッシュファイル形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
ファイルの圧縮	すべての結果を一つのファイルに圧縮します。
個別メッシュデータの結合	個別の歯の上顎または下顎の結果を結合します。いくつかのファイルを一つのプログラムにインポートできない場合に役に立ちます。
すべての咬合関係をエクスポート	複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、一度にすべての咬合結果をエクスポートできます。

ケース情報を PDFとして保 存	結果付きPDFとしてケース情報を保存します。
------------------------	------------------------

選択したファイルのエクスポート

Medit Linkは、ファイルビューアーの拡張メニューからエクスポート機能を提供します。これを使用すると、選択したファイルを簡単にエクスポートできます。

1. データグループの横にある「メニュー」アイコンまたはファイルビューアーのデータツリー中の一つをクリックします。
2. 次に「エクスポート」をクリックします。

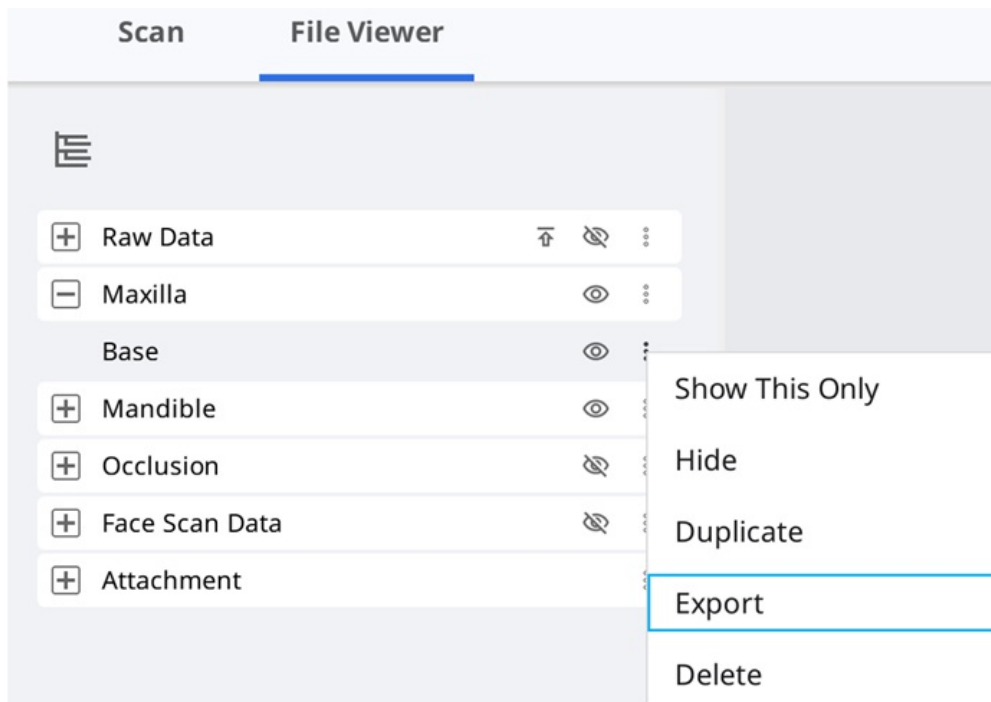

3. エクスポートダイアログは選択したエクスポートするファイルだけを表示します。

Export Files in This Case

Options File List

☒

- ☒ Maxilla
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Occlusion
 - ☒ First Occlusion

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close **Export**

4. 最後に「エクスポート」をクリックします。

マージンラインのエクスポート


Medit Scan for Clinicsは、マージンラインの作成機能を提供し、Medit LinkはCADプログラムにマージンラインを転送できます。

色としてマージンラインをエクスポート

通常、Medit Linkは色としてマージンラインを転換し、上顎または下顎と一緒にその結果をエクスポートします。色情報のCAD参照データのマージンラインを作成できます。

例：

上顎

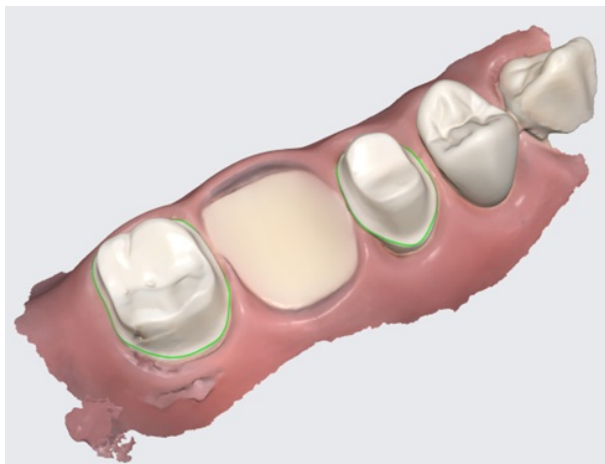

色としてのマージンライン付き結果

■注意事項

この機能は、meditMesh、OBJ、PLYなどの色情報を含む形式で利用できます。マージンラインはSTLに転換できません。

■注意事項

CADタイプ > 3Shapeはこの機能をサポートしていません。


ファイルとしてマージンラインをエクスポート

exocadの場合、Medit Linkはexocadに直接インポートできる“~margin.xyz”にマージンラインをエクスポートします。

追加作業の必要なしにexocadのこのファイルを使用できます。

例：

上顎	マージンライン
----	---------

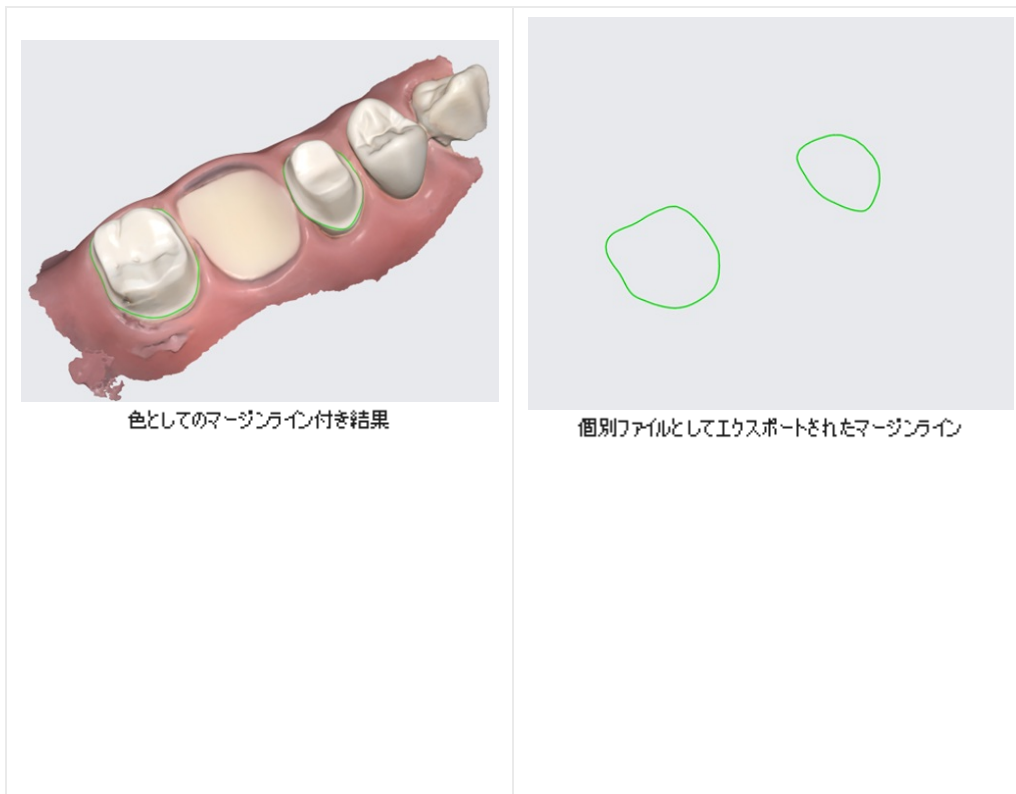

CSVとしてケースリストをエクスポート

Medit LinkはCSV形式でケースリストをエクスポートできる機能を提供しています。


基本情報付きケースリストをエクスポートし、ケースを簡単に管理できます。

「CSVにエクスポート」機能は、Medit Linkアプリケーションの以下のメニューで利用できます。

- In Box
- Work Box

ケースリストのエクスポート方法

1. In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. エクスポートするケースを選択します。

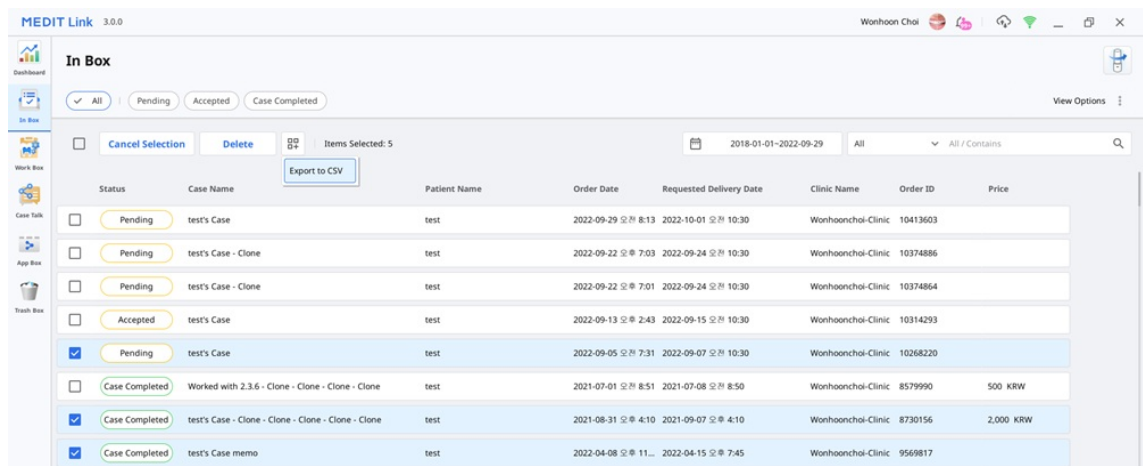

3. 上部の「拡張メニュー」ボタンをクリックし、「CSVにエクスポート」オプションを選択します。



4. 保存場所とファイル名を定義し、それから結果を保存します。

Medit Linkウェブからファイルをダウンロード

Medit Linkはダウンロード機能を提供しています。

Medit Linkアプリケーションをインストールせずに結果ファイルを取得したい場合は、Medit Linkウェブサービスからファイルをダウンロードできます。

❗注意事項


データは、ウェブからファイルをダウンロードするためにMeditクラウドにアップロードする必要があります。

ダウンロード機能は、Medit Linkウェブサービスの以下のメニューで利用できます。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box／Work Box


右上部に「ダウンロード」ボタンがあります。

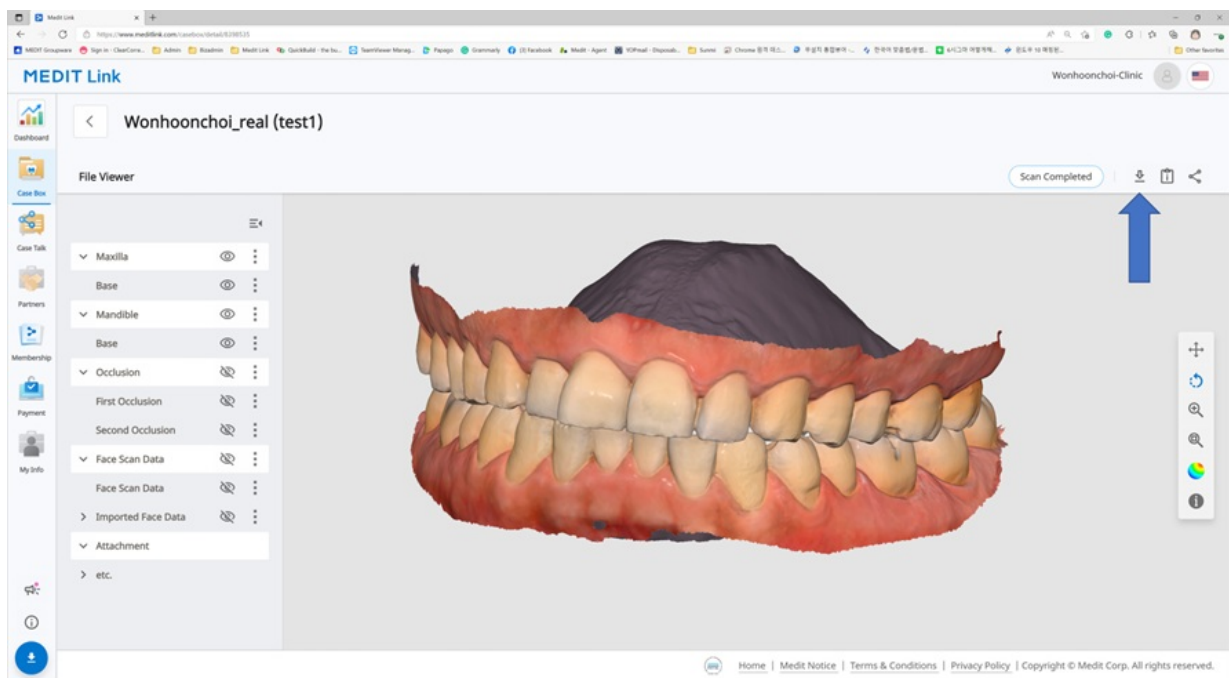

Web Viewer

Case Talkを使用してケースを共有する場合、ダウンロードを許可するかどうかを設定できます。

「ダウンロードを許可」にチェックを入れ、ケースを共有する場合、共有リンクに接続しているすべてのユーザーはファイルをダウンロードできます。

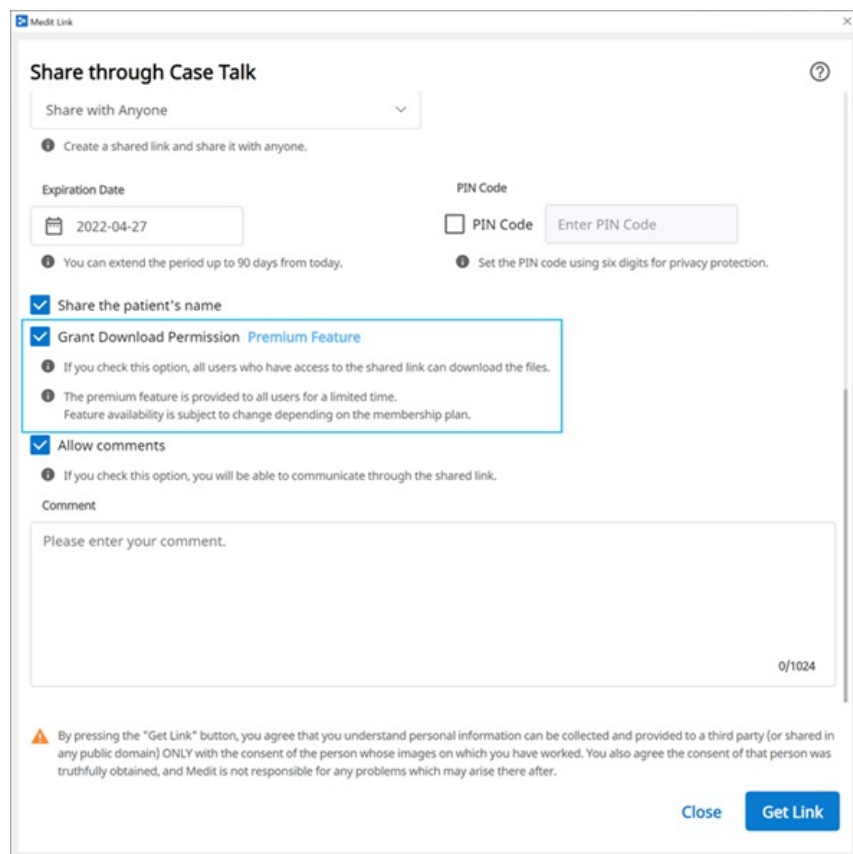

Share through Case Talk

Share with Anyone

1 Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

1 You can extend the period up to 90 days from today. 1 Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

1 If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments


1 If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment: Please enter your comment. 0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

Web Viewerの右上部に「ダウンロード」アイコンがあります。

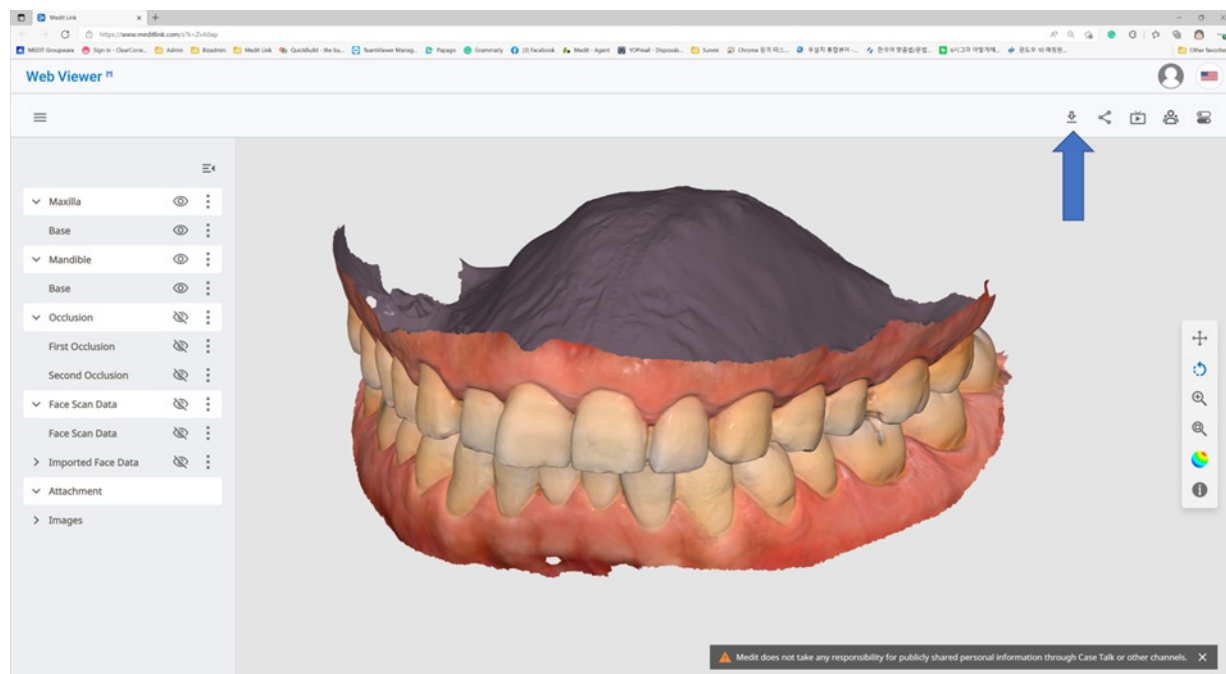

ダウンロード方法

1. 「ダウンロード」をクリックします。



2. ダウンロードダイアログからメッシュ形式を選択します。

Download **Premium Feature**

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. 次に「OK」をクリックします。

107

ケースの注文/管理

接続しているプログラムで取得したデータおよびユーザーが添付したデータで簡単にケースを注文できます。

ケースの注文

Case Boxのパートナーに注文を出すことができます。

1. 「注文」ボタンをクリックします。
2. 注文に必要な情報を確認します。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. パートナーを選択します。
4. 注文リストタブから製品情報を確認します。
 - 患者名を共有するかどうかを決めます。
5. ファイルリストタブから注文するファイルを確認します。
6. 希望納品日を入力します。
 - デフォルト値は、注文日後7日で設定されています。
7. パートナーにメモやタグを追加し、特定の詳細説明ができます。
8. 複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、「すべての咬合関係を注文する」をチェックすると一度にすべての咬合結果を送信できます。
9. 注文を進めます。
 - **支払いの省略**: Medit Linkが提供する決済システムを使用せずに注文を進めます。「契約済み」ステータスのパートナーから発注の場合に利用できます。
 - **支払い**: Medit Linkが提供する決済システムを利用して注文を進めます。契約済みパートナーからの注文の場合に利用できます。
 - **OK**: 製品の価格に関してもない注文を進めます。「パートナーシップ」ステータスのパートナーからの注文の場合、利用できます。


注意事項

以下のサービスは、Medit Link中国ではご利用できません。

- 支払いの省略
- 支払い


注文の確認 (In Box)

- 注文受領時に承認します。
- 承認した注文は、Work Boxに転送されます。

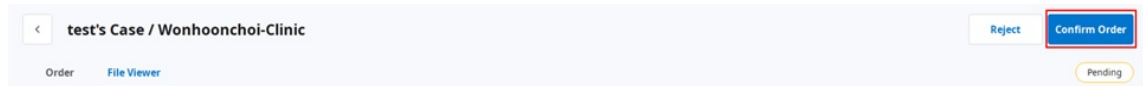


注文のキャンセル (Order Box)

- パートナーが注文を承認する前に注文をキャンセルできます。
- キャンセルされたケースは、再度注文できます。

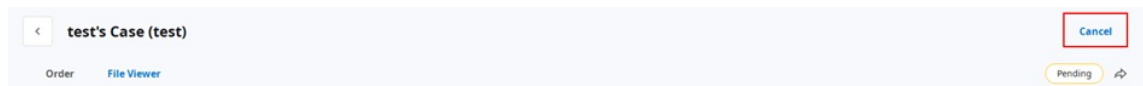


注文の拒否 (In Box)

- 受領した注文を拒否できます。
- 拒否されたケースは再度注文できます。

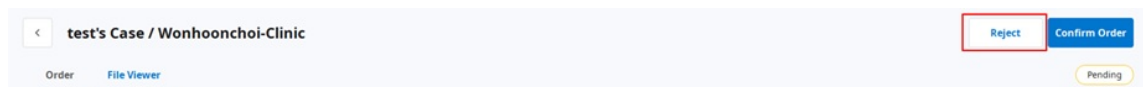

注文済みケースの確認

歯科医院アカウントのOrder Boxから注文したケースの詳細を確認できます。技工所アカウントのIn Boxから受領したケースも確認できます。

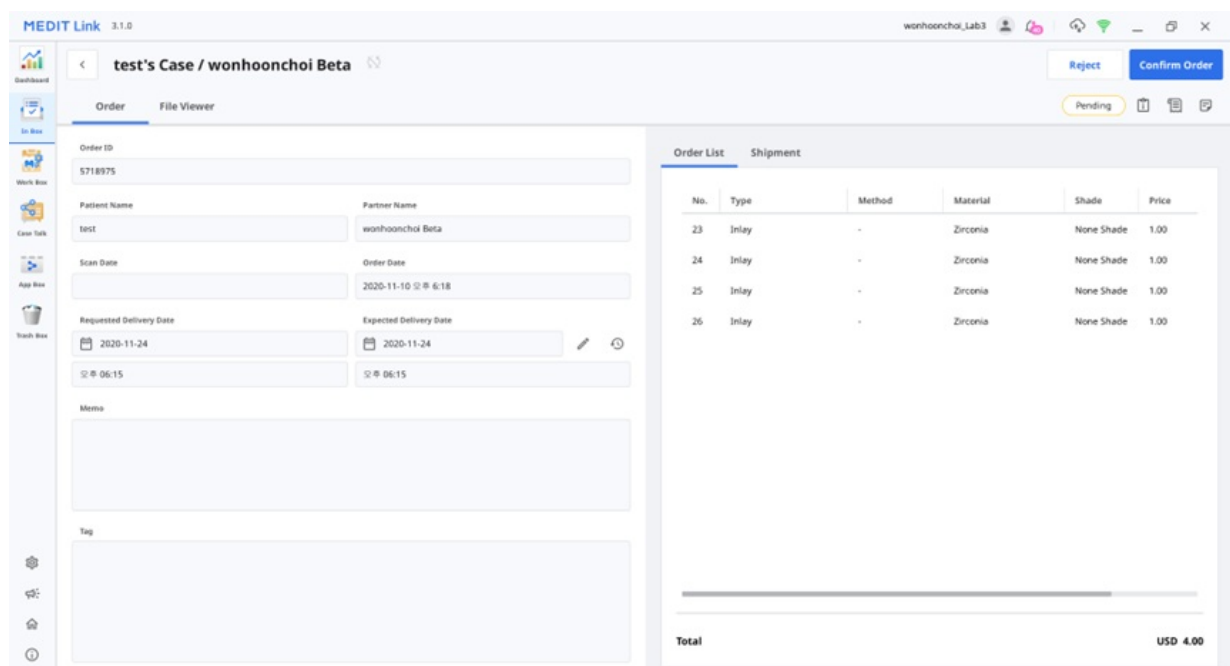

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

注文情報	注文に含むことができる情報は次の項目です。注文ID/患者名/アカウント名/スキャン日/納品日/配送予定日/メモ。 注文済み製品および配送情報の詳細を確認できます。
注文リスト	注文リストは、注文した製品の詳細を表示しています。
配送	発送情報の入力/確認をします。

配送情報の入力(In Box)

完了した作業の配送情報を入力し、発送を開始します。

1. 配送タブをクリックします。
2. 配送情報を入力し、「登録」をクリックします。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 入力した情報はパートナーに送信されます。

納品日の管理

注文時に希望する納品日を設定でき、この情報はパートナーに転送されます。

納品希望日の設定(歯科医院アカウント)

- Case Boxから注文する場合、希望納品日を入力できます。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- デフォルト値は、注文日後7日です。
- 製品受取希望日時を入力し、注文を進めます。
- スライダーを使用して簡単に時間を設定できます。

納品希望日の設定 (歯科医院アカウント)

- In Boxから注文されたケースの納品希望日を入力できます。

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. パートナーに納品希望日を確認し、「編集」ボタンを使用して予定を変更します。
2. 実際の作業日を考慮して納品予定日を入力します。必要があれば、コメントを残すこともできます。
3. 「適用」をクリックします。

4. 納品予定日およびメモは、注文と一緒に転送されます。
 - Order Boxの日付とメモを確認できます。
 - 納品予定日を変更でき、その変更はパートナーに転送されます。
5. 「履歴」ボタンを使用してケース履歴を確認できます。



ケースの完了

完了 (Work Box／In Box)


すべての作業が完了したら、「完了」を押し、ケースを完了します。

ケースの詳細からケースを完了する

開くボタンの右側に「メニュー」ボタンがあります。



「メニュー」アイコンをクリックし、「完了」を選択し、作業を完了します。

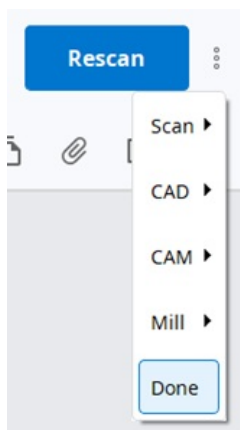


ケースリストから複数のケースを完了する

Work Boxからケースを選択する場合、リストの上部に拡張メニューボタンがあります。



以下のように複数のケースを完了します。

1. Work Boxに移動します。
2. すべてのケースを選択し、完了します。

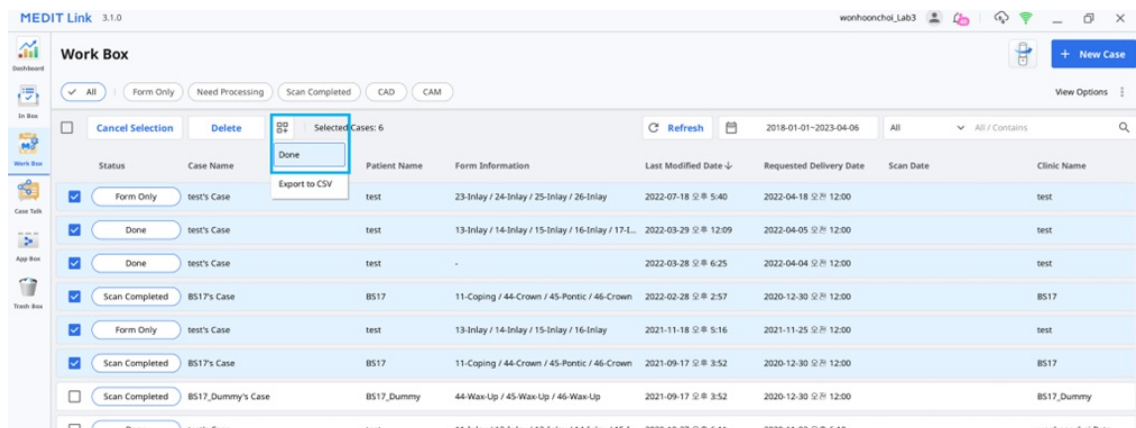

3. 上記に記載した「拡張メニュー」ボタンをクリックします。




4. リストから「完了」を選択します。

完了 (Case Box／Order Box)

技工所からケースが完了後、歯科医院はケースを確認して、全注文プロセスを完了する必要があります。

技工所が作業を完了した場合、歯科医院はOrder Boxに「納品確認」機能を確認できます。


これをクリックすると、全注文プロセスが完了し、ケースステータスが「ケース完了済み」に変更されます。

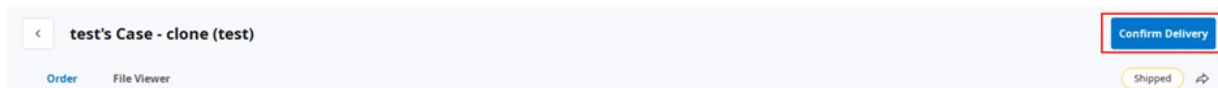

Case Boxの注文のないケースの完了

技工所に注文されていないケースに関して、Case Boxからこれらのケースを完了にできます。

1. Case Boxに移動します。
2. 完了させたいケースを選択します。

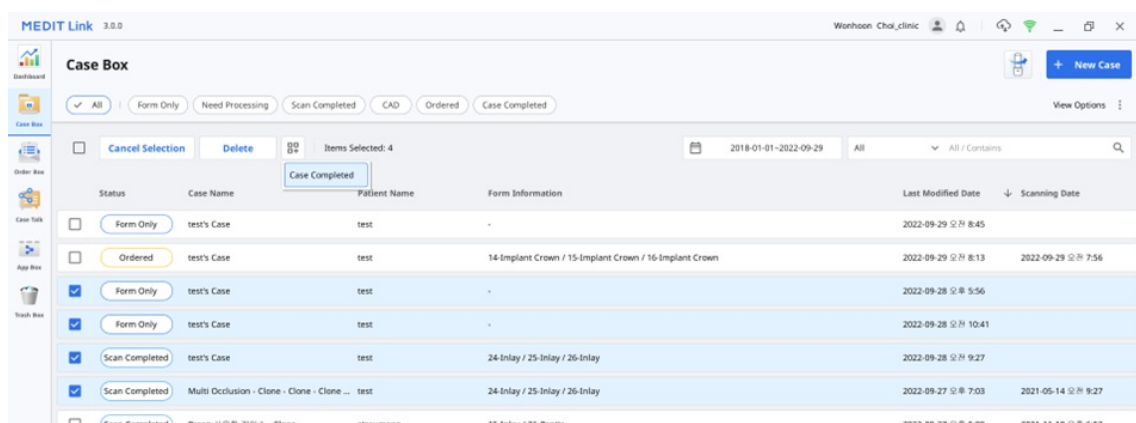

3. 「拡張メニュー」ボタンをクリックします。



4. 「ケース完了済み」を選択します。

タグを使用してやり取りをする

タグを使用してケースに関する追加情報を追加し、パートナーに送信できます。

新規ケースの作成時にタグを追加

新規ケースを作成またはケース情報を編集時にタグを入力できます。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

以前に使用したタグを簡単に検索し、選択できます。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet
tagtest
tag
tat2

注文時にタグを追加

注文中に注文ダイアログのタグを確認し、編集できます。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

ケースの詳細でタグを確認

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

The image shows a screenshot of the MEDIT Link 3.1.0 software interface. The main window displays the 'mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)' case. A 'File Viewer' tab is active, showing a 3D model of the occlusion. A 'Memo' dialog box is open, displaying the 'Tags' section with three tags: 'Doctorname', 'Specialmaterial', and 'SpecialComment'. A blue box highlights the 'Tags' section in the dialog box. A blue arrow points from the 'Tags' section in the dialog box to the 'Tags' section in the main window's 'File Viewer' tab.

