

USER GUIDE

Medit Link



Table of Contents

Medit Link

6	المقدمة
6	Medit Link
6	نظرة عامة على الخدمة
7	الخدمات السحابية
7	منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

Medit Link < التثبيت

8	متطلبات النظام
8	متطلبات النظام لـ Windows
8	متطلبات النظام لـ macOS
8	متطلبات النظام لخدمة الويب
8	الموصى به للمتصفحات
8	الحد الأدنى للأجهزة المحمولة
9	التثبيت على Windows
11	التثبيت على macOS
11	يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan
	.for Clinics

Medit Link < موقع Medit Link

15	نظرة عامة
16	Dashboard
16	نظرة عامة على الـ Dashboard
16	Medit Insights
17	الاشتراك في Medit
	Insights
18	إلغاء الاشتراك في Medit
	Insights
19	Case Box/Work Box
19	فترة الحالات
19	الفترة حسب الحالة
19	الفترة حسب المدة
20	الفترة حسب البحث
20	تفاصيل الحالة
22	Order Box/In Box
22	تفاصيل الطلب
22	علامات التبويب في Order
	Box/In Box
23	Case Talk
23	إنشاء Case Talk
24	تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة
26	Case Talk تفاصيل
26	Web Viewer
27	التعليق
28	التعليقات
29	مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي
29	شجرة البيانات
29	التحكم بشجرة البيانات
30	ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد
32	الشركاء
32	البحث عن شركاء

32	قائمة شركائي
33	دعوة شركاء
34	العضوية
34	العضوية
34	خطتي
35	التخزين السحابي
36	الاشتراك
37	إلغاء الاشتراك
39	معلومات الفواتير
39	كيفية إضافة طريقة دفع
41	كيفية تغيير طريقة الدفع
42	الاسترداد
42	تسجيل رمز الاسترداد
43	تفعيل رمز الاسترداد
44	الدفع
44	تفاصيل الدفع (حسابات العيادة & المختبر)
44	معلومات حساب الدفع (حساب المختبر فقط)
45	My Info
45	حسابي
45	منظمتي (حساب المشرف فقط)
45	الماسح الضوئي الخاص بي
46	قائمة أسعار (حساب مشرف المختبر فقط)
47	قوائم أخرى
47	الإخطارات & التحديثات
47	معلومات عن Medit
47	تنزيل تطبيق Medit Link

Medit Link < تطبيق Medit Link

49	نظرة عامة
49	نظرة عامة عن الـ Box
51	شريط العنوان
51	My Information
51	الإشعارات
52	مدير تزامن الحالات
53	التحميل
53	التنزيل
54	حالة الشبكة
55	القائمة
55	Dashborad
55	Case Box/Work Box
56	علامات التوبيخ في Case Box/Work Box
56	الوظائف في Case Box/Work Box
57	Order Box/In Box
58	علامات التوبيخ في Order Box/In Box
58	Case Talk
59	App Box
59	Trash Box
60	الإعدادات
60	إدارة المريض
60	إضافة مريض جديد
61	حذف مريض
61	دمج مرضى

62	إخطار & تحديث
62	انتقل إلى موقع Medit Link
62	معلومات عن Medit
64	الإعدادات
64	عام
65	ادارة التخزين
65	تحديد الفترة
65	التخزين المحلي
65	التخزين السحابي
66	تحديد البرنامج المتصل
66	خيارات التصدير
68	أداة تحويل الحالة
68	كيفية استخدام أداة تحويل الحالة
70	خيارات الوكيل
70	حول
71	دليل المستخدم
72	عارض الملفات
72	شجرة البيانات
72	أدوات التحكم في النموذج
72	التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد
73	التحكم بالصور ثنائية الأبعاد
74	أدوات وظيفية
74	التقاط الصور والمنكرة
74	Ortho Capture
75	ملء الثقوب
75	القص
78	تحسين محاذاة الإطباق
79	حركة الفك السفلي
80	قم بإدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات
80	كيفية إدارة نتائج متعددة
82	خيارات العرض
82	فلاتر الحالة
83	عناصر الجدول
84	نوع العرض
85	العرض في صورة معرض
86	العرض في صورة قائمة
86	التجميع
87	الفرز
89	الفلتر والبحث
89	الفلتر حسب التاريخ
89	إمكانات البحث المتقدم

Medit Link < سير العمل

91	إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات
91	إنشاء حالات
91	إنشاء حالات في Case Box (العيادة)
92	إنشاء حالات في Work Box (المختبر)
92	تعديل الحالات
92	تعديل الحالات في Case Box (العيادة)
93	تعديل الحالة في Work Box (المختبر)
93	استنساخ الحالات
93	استنساخ حالة في Case Box (العيادة)
94	استنساخ حالة في Work Box (المختبر)
94	حذف حالة
94	حذف حالة (العيادة والمختبر)

95	معلومات التسجيل
95	تسجيل معلومات التسجيل في Case Box
95	الإدخال في علامة تبويب النموذج
95	الإدخال في علامة تبويب CAD
95	تسجيل معلومات التسجيل في Work Box
95	الإدخال في علامة تبويب النموذج
95	الإدخال في علامة تبويب CAD
96	توصيل الأسنان بجسر
96	ضبط خيارات المسح
96	Medit Scan for Labs
96	خيارات عامة
96	خيارات بالأسنان
97	الإضافة إلى المفضلات
97	الإضافة إلى المفضلات
97	إدارة القوالب المفضلة
98	العمل على المسح/CAD
98	عملية المسح
98	عملية CAD
99	الحصول على ملفات النتائج
99	تصدير ملفات نتائج المسح
99	تصدير الملفات المحددة
100	تصدير خط الإنهاء
101	تصدير خط الإنهاء كلون
101	تصدير خط الإنهاء كملف
102	تصدير قائمة الحالات كملف CSV
102	كيفية تصدير قائمة الحالات
102	تنزيل ملفات من موقع Medit Link
103	Case Box/Work Box
103	Web Viewer
104	كيفية التنزيل
106	طلب/إدارة الطلبات
106	يمكنك بسهولة طلب حالة تحتوي على بيانات تم الحصول عليها من البرامج المتصلة والبيانات المرفقة من قبل المستخدم.
106	طلب حالات
107	تأكيد الطلب (In Box)
107	إلغاء الطلب (Order Box)
107	رفض طلب (In Box)
107	التحقق من الحالات المطلوبة
108	إدخال معلومات الشحن (In Box)
108	إدارة تاريخ التسليم
108	تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)
110	اكمال الحالات
110	الإكمال (Work)
110	(Box/In Box)
110	أكمل حالة من تفاصيل الحالة
111	أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات
111	الإكمال (Case)
111	(Box/Order Box)
111	أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box
113	التواصل باستخدام العلامات
113	إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة
114	إضافة علامات عند الطلب
114	تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

المقدمة

Medit Link

Medit Link هي أداة تعاونية مصممة لتسهيل التواصل بين العيادات والمختبرات لتوفير سير عمل محسن لكل الأطراف.

يقدم ميزات متباينة بناءً على نوع وأذونات كل حساب. يوفر البرنامج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة سير العمل، من المسح الضوئي باستخدام الماسحات الضوئية القموية والنمذجة، إلى طلب الحالات، إلى تصميم التعويضات وإنتاجها.

يتكون Medit Link من خدمة ويب وتطبيق كمبيوتر.

نظرة عامة على الخدمة

التطبيق	الموقع		
- إدخال معلومات النموذج - المسح - تقديم/استلام الطلبات وإجراء المدفوعات - الربط بـ CAD - إدارة المرضى	- تسجيل وإدارة الحساب - البحث - البحث وإدارة الشركاء - مشاركة الحالات عبر Web Viewer برابط قابل للمشاركة - فتح حالات منشأة على التطبيق - إدارة الطلبات		
إدخال معلومات النموذج ، المسح الضوئي، والربط بـ CAD ، تقديم الطلبات، إجراء المدفوعات، وإدارة المرضى. Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Patient Management -	البحث عن الشركاء ومؤسستك وإدارتها، إدارة معلومات الدفع، ومشاركة الحالات. Dashboard- Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - Payment - My Info -	المشرف	العيادة
Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box -	Case Box - Case Talk - My Info -	العضو	
إدخال معلومات النموذج، المسح الضوئي، الربط بـ CAD ، واستلام/إدارة الطلبات. Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box -	البحث عن الشركاء ومؤسستك وإدارتهم، إدارة معلومات الدفع، ومشاركة الحالات. Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners- Membership - Payment - My Info -	المشرف	المختبر
Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box -	Work Box - Case Talk - My Info -	العضو	

الخدمات السحابية

يُدعم Medit Link التحميل/التنزيل التلقائي لقواعد البيانات والملفات من خلال AWS (Amazon Web Services).

تتم مزامنة البيانات المخزنة في السحابة تلقائيًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمين متعددين في المنظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات من أي جهاز كمبيوتر في أي وقت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة على الحفاظ على أمان جميع بياناتك. إنها تحافظ على بياناتك آمنة حتى في حالة فقد البيانات بسبب فشل الكمبيوتر المفاجئ.

تتيح الخدمة السحابية لأطباء الأسنان والمختبرات المشاركة مشاركة البيانات بسرعة دون متاعب إرسال بريد إلكتروني أو نقل عمليات المسح يدويًا. يتم تشفير جميع البيانات بما في ذلك معلومات المريض وتخزينها ونقلها بشكل آمن. يتوافق Medit مع القوانين واللوائح الطبية مثل HIPAA و GDPR.

منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

يقدم Medit Link نظام طلبات ودفع خاص به.

- يسمح لك Medit Link بإنشاء عقود بين أطباء الأسنان ومختبرات الأسنان ومشاركة البيانات بسرعة وسهولة.
- يمكنك التحقق من حالة الطلب وإدارتها.

يعمل النظام المدعوم ببطاقة الائتمان مع وحدات الدفع الخاصة بمنصات الدفع عبر الإنترنت، مثل Stripe (www.stripe.com) و I'mPort (<http://www.iampor.kr>) ، مما يجعل خدمات الدفع سهلة ومريحة.

متطلبات النظام

ملاحظة

يرجى الرجوع إلى متطلبات النظام لـ Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs إذا كنت ترغب في استخدام برنامج المسح مع الماسح الضوئي الخاص بك.

متطلبات النظام لـ Windows

حاسوب محمول & كمبيوتر سطح المكتب	
Intel Core i5 2.6 GHz أو أعلى	CPU
GB 16 أو أعلى	RAM
NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) أو أحدث / أو بطاقة فيديو AMD مكافئة	الرسومات
Windows 8 64 Bit (غير متوفر في Bit 32) أو أعلى	نظام التشغيل

متطلبات النظام لـ macOS

Mac	
M1 مع 8-Neural Engine، 16-core GPU، 7-core	المعالج
GB 16 أو أعلى	RAM
Monterey 12	نظام التشغيل

متطلبات النظام لخدمة الويب

الموصى به للمتصفحات

المتصفحات	
(Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium	الكمبيوتر
Chrome, Firefox	Android
Safari, Chrome, Firefox	iOS


الحد الأدنى للأجهزة المحمولة

iOS	Android	
ما يعادل iPhone 7 أو أعلى	ما يعادل Galaxy S7 أو أعلى	الجهاز
iOS 11.0	Android 7.1 Nougat	نظام التشغيل
GB 2 أو أعلى	GB 3 أو أعلى	RAM
A10 Fusion	أعلى من Snapdragon 710	AP


التثبيت على Windows

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع برامج اكتساب المسح - Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs.


1. قم بتشغيل .Medit_LinkSetup.exe.
2. حدد لغة للتثبيت.
3. حدد المجلد لتثبيت Medit Link. يرجى قراءة شروط وأحكام الترخيص والموافقة عليها والنقر على "تثبيت".

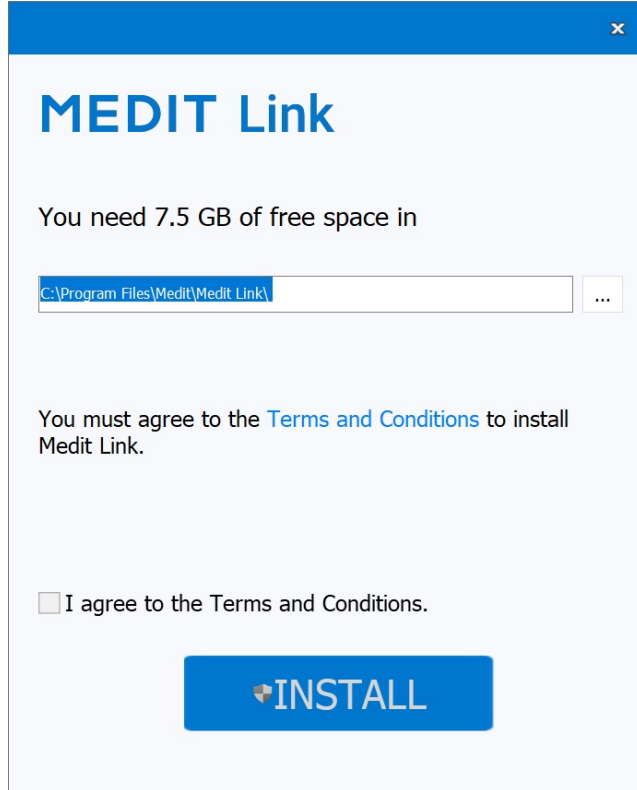

4. تأكد من فصل كبل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قد لا يبدأ التثبيت إذا كان الماسح متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. سيتم تثبيت البرنامج تلقائيًا وقد يستغرق بضع دقائق. لا تقم بإيقاف تشغيل أو فصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن يكتمل التثبيت.

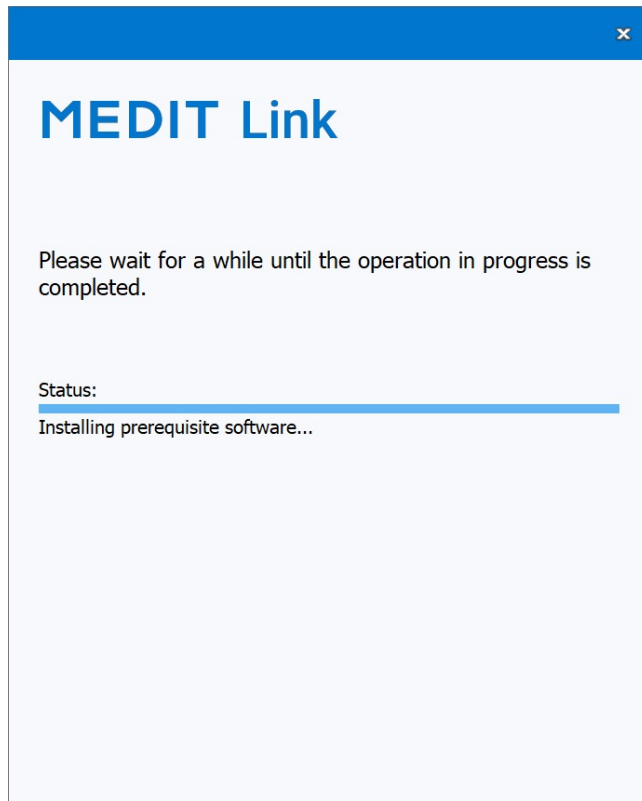

6. يرجى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت. يمكنك المتابعة بدون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن لديك الماسح الضوئي.

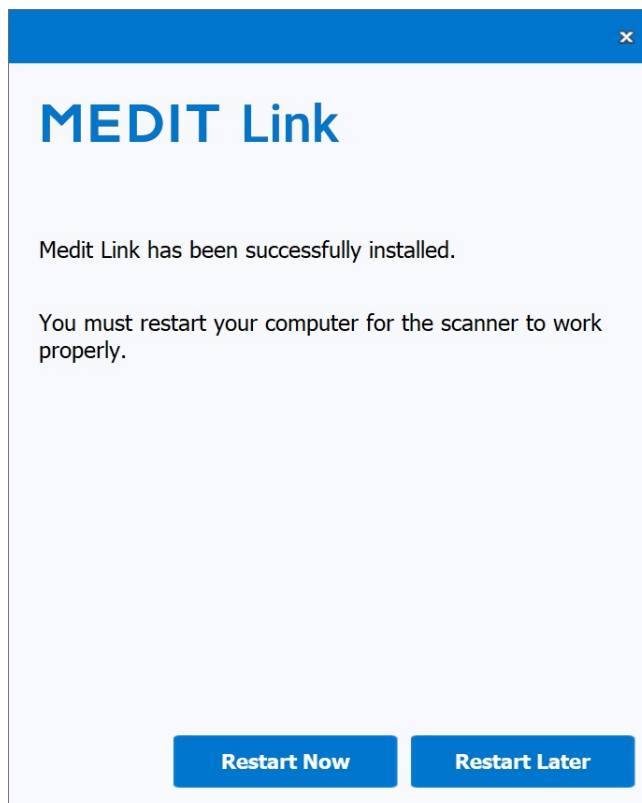


ملاحظة

إذا لم تتم إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت، فقد لا يعمل الماسح الضوئي بشكل صحيح.


التثبيت على macOS

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan for Clinics.


1. قم بتشغيل Medit_Link_x.x.x.pkg وانقر على "متابعة".

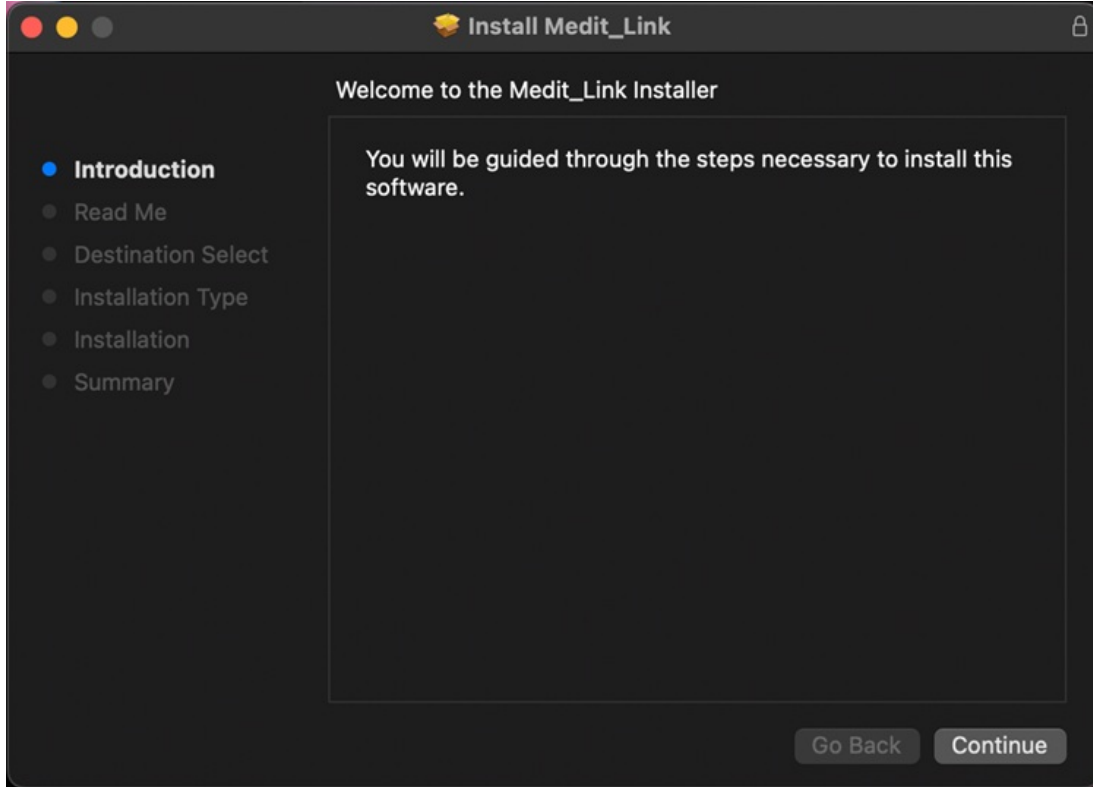


2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على "متابعة".

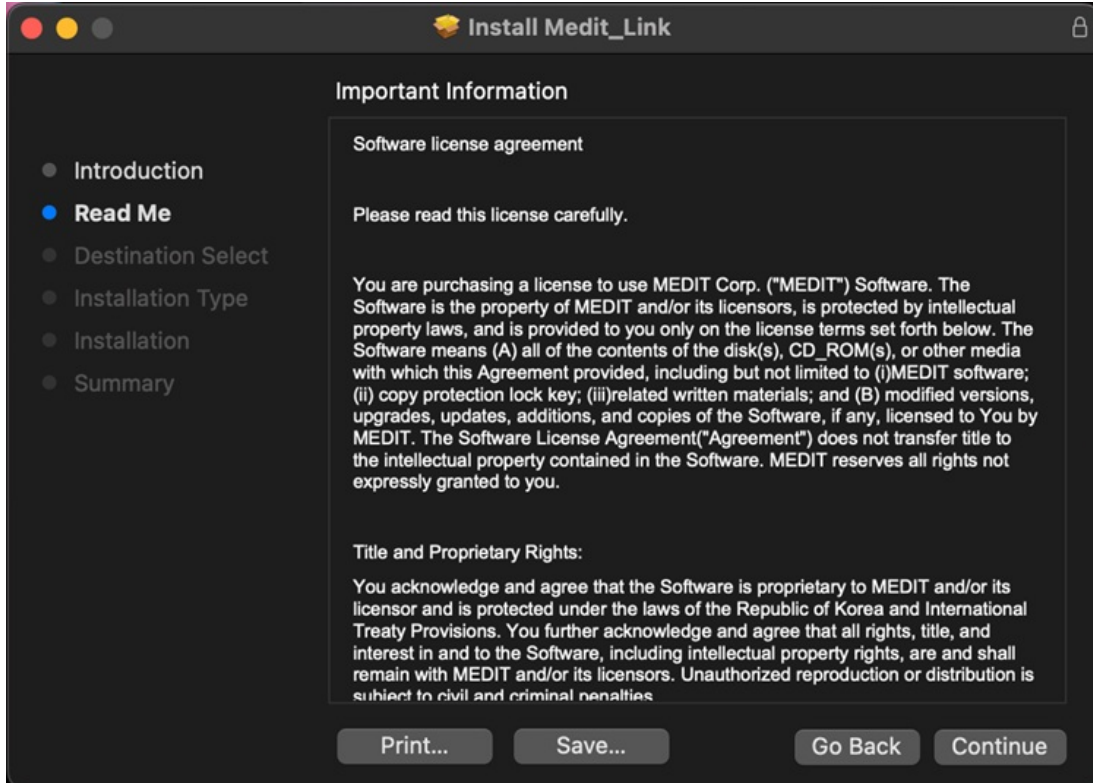

3. حدد القرص المراد تثبيته وانقر على "متابعة".

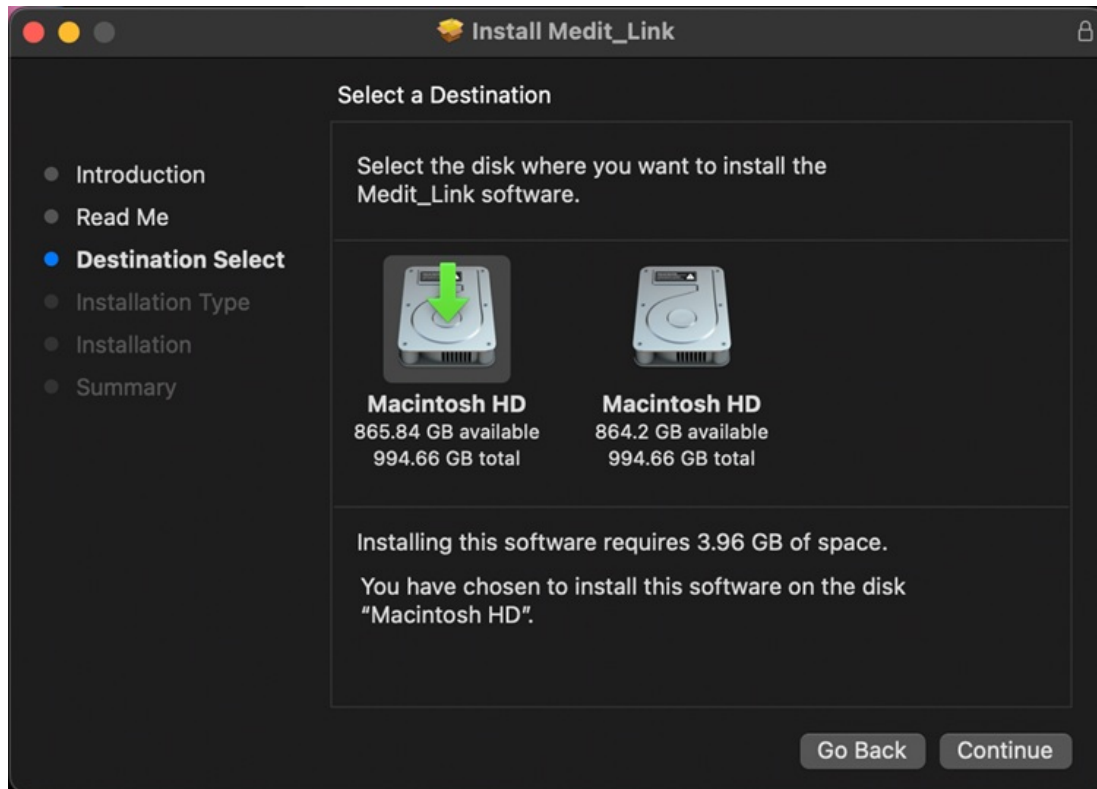


4. انقر على "تغيير موقع التثبيت..." لتغيير وجهة التثبيت.

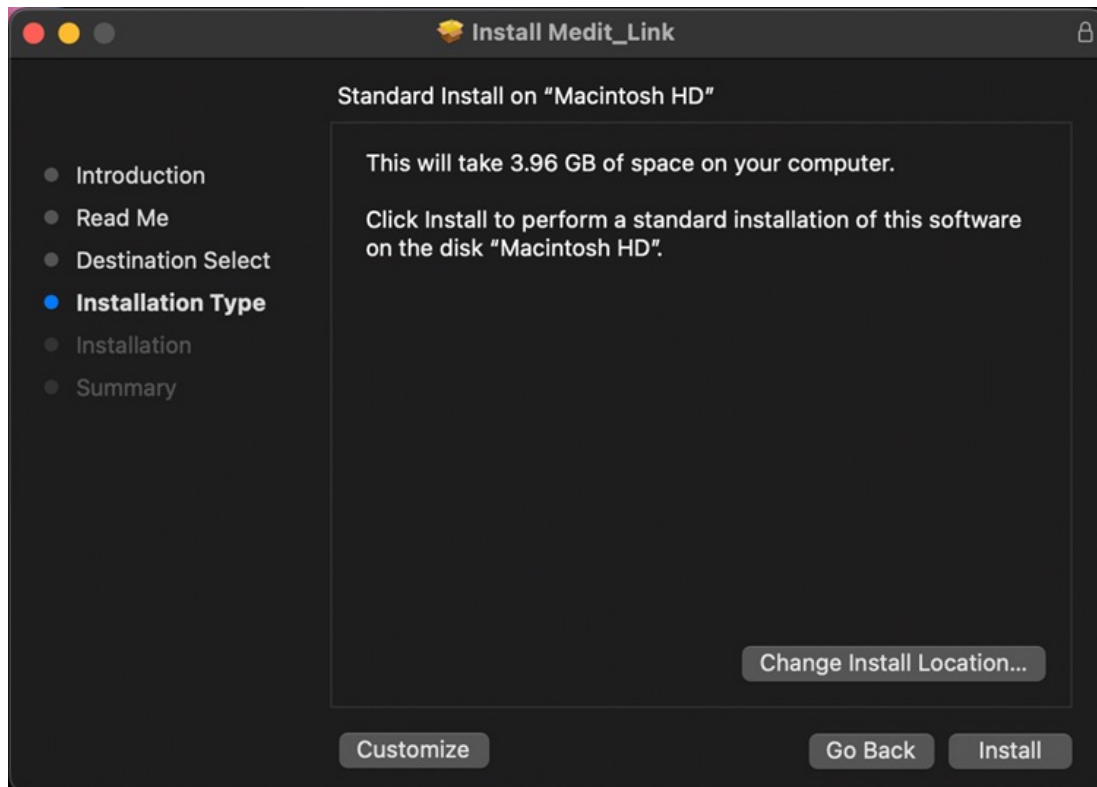


5. انقر على "تثبيت" واكتب كلمة مرور الMac للسماح بالتثبيت إذا طُلب منك ذلك.



6. انتظر حتى اكتمال التنصيب.

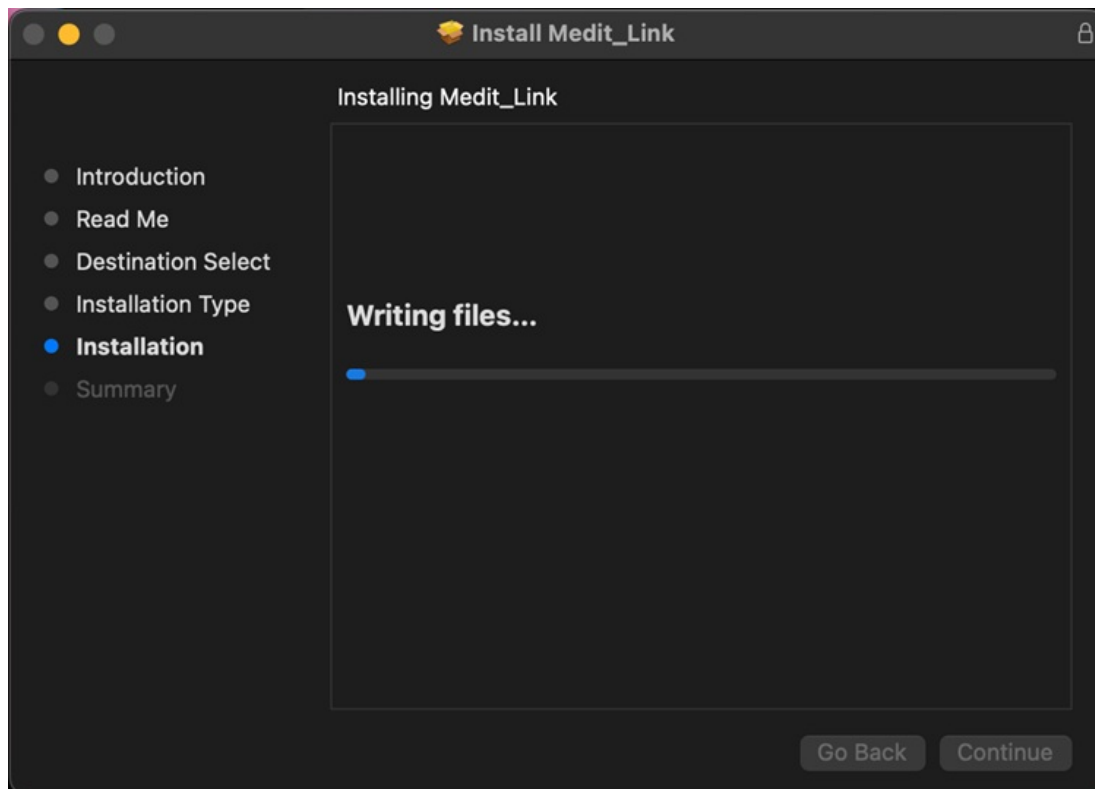

7. انقر على "إغلاق" للخروج من نافذة التنصيب.

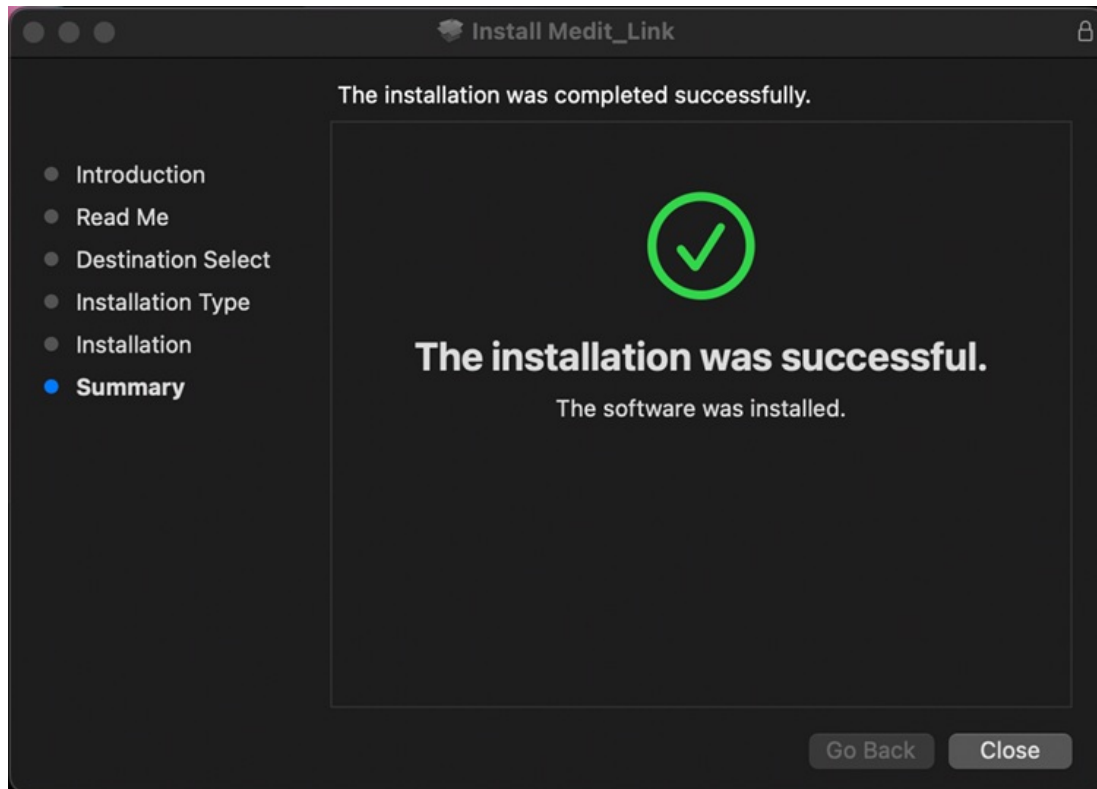

نظرة عامة

MEDIT Link

https://stage-www.meditlink.com/casbox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세제역... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bicadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열거하기

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. wonhoon choi

Case Box

Dashboard Case Box Order Box Case Talk Partners Membership Payment My Info

View Options

Total Cases : 18 2023-01-06 ~ 2023-04-06 Case Name Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

نظرة عامة على الـ Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجدول - في كل من تطبيق وموقع Medit Link.

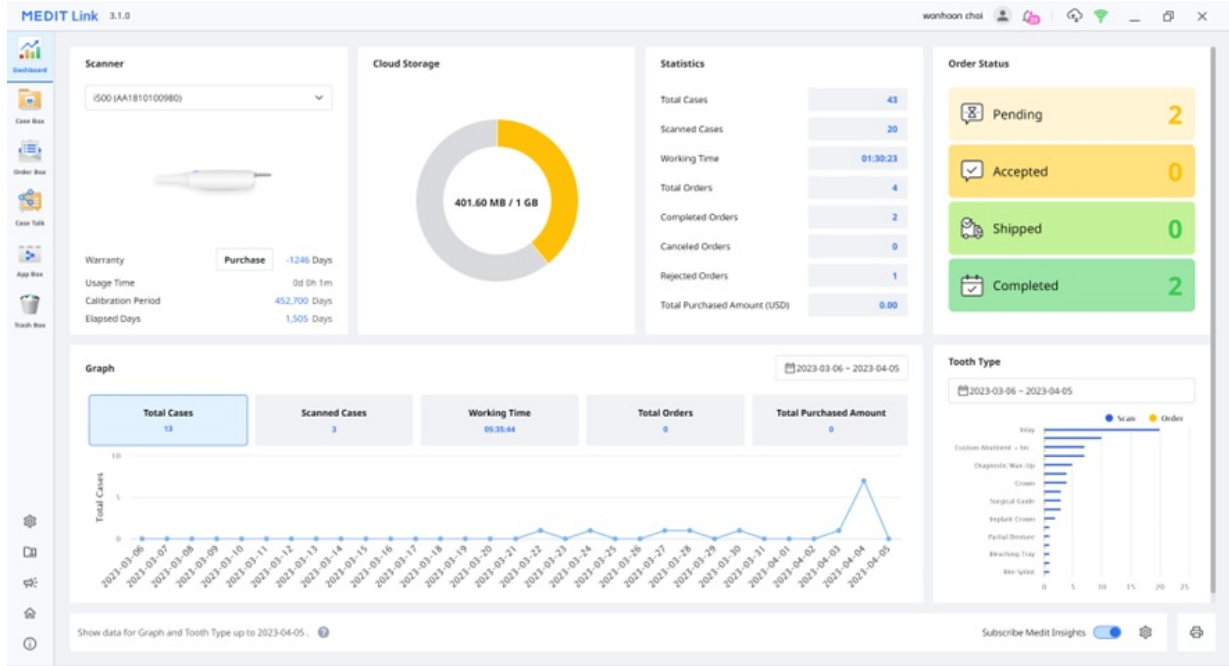

تعرض الرسوم البيانية والمخططات في الـ Dashboard إحصائيات العمل على Medit Link بأكمله.

الماسح الضوئي	قم بتوفير معلومات حول الماسحات الضوئية النشطة، بما في ذلك الضمان، وقت استخدام الماسح الضوئي، الفاصل الزمني للمعايرة والوقت المنقضي للمعايرة.
التخزين السحابي	عرض السعة الإجمالية للسحابة والمقدار المستخدم.
الإحصائيات	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة العمل.
حالة الطلب	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة الطلب.
الرسم البياني	رسم معلومات الوظيفة حسب الفترة الزمنية.
نوع السن	توفير إحصائيات عن عدد عمليات المسح والطلبات حسب معلومات العلاج.


Medit Insights

Medit Insights هي خدمة تقارير تساعدك على تحليل إحصائيات الاستخدام الخاصة بك.

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• Medit Insights

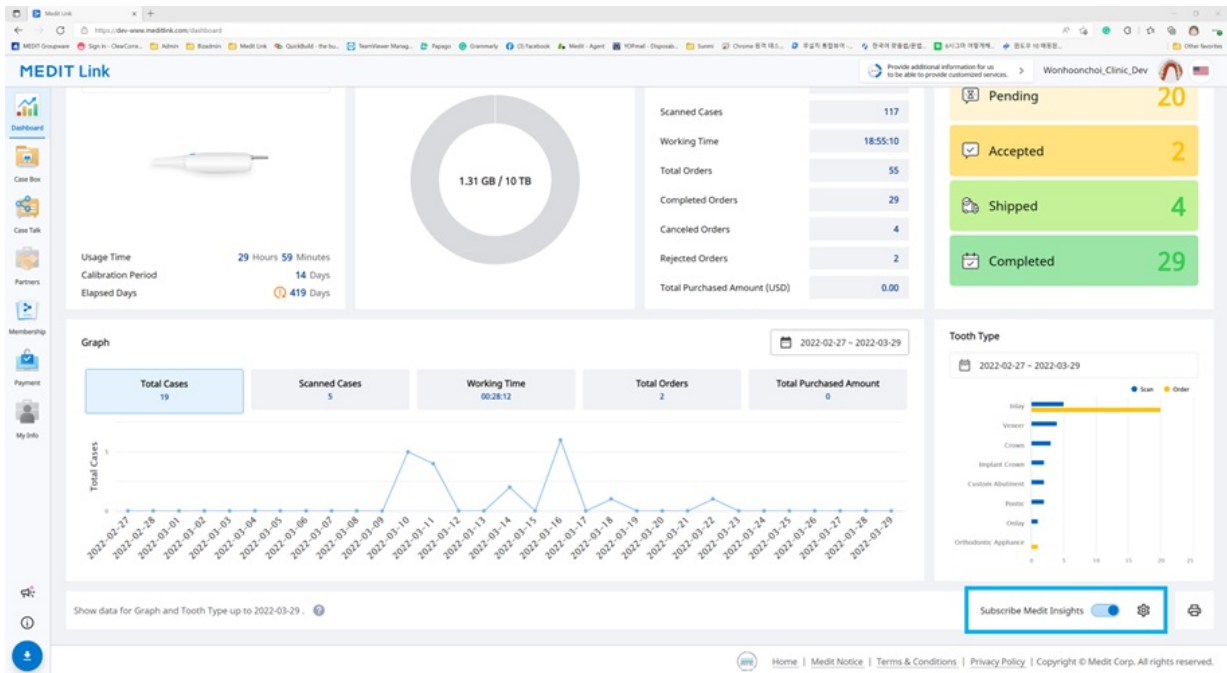

الاشتراك في Medit Insights

يمكنك تلقي بريد إلكتروني للتقرير في اليوم الثاني من كل شهر. لا يلزم إجراء عملية تسجيل إضافية. قم بتمكين "اشتراك في Medit Insights" فقط

إذا كنت لا تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب Medit Link، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

في الثاني من كل شهر، سنتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على الإحصائيات كما هو موضح أدناه.

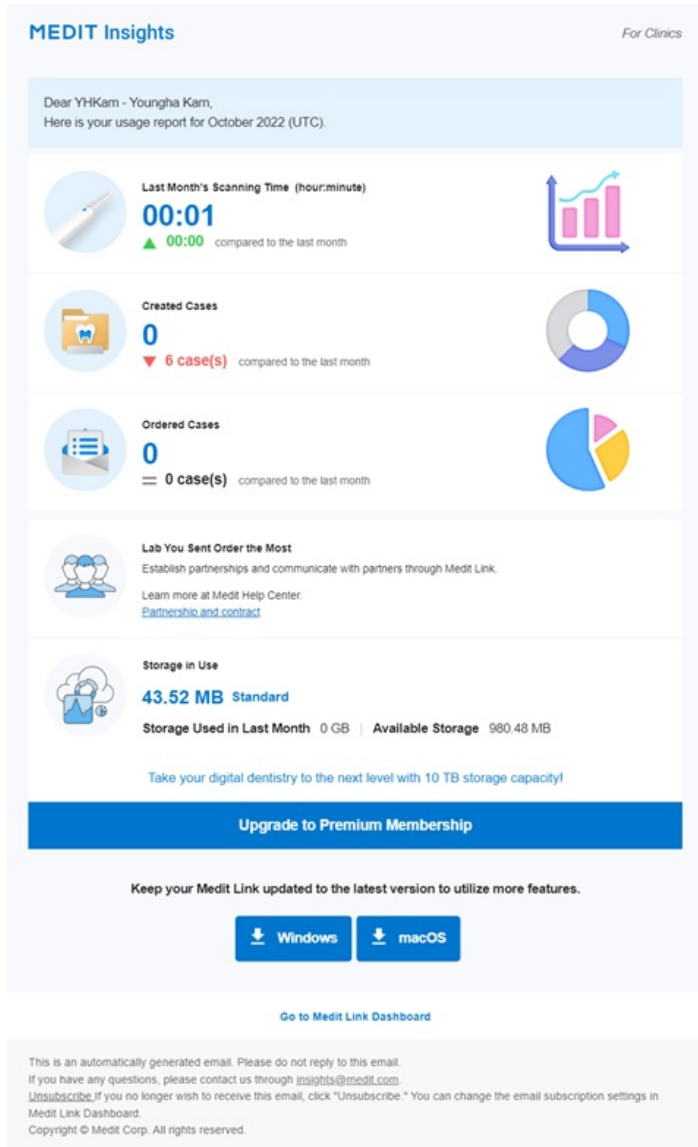


لافتة	يوفر Medit نصائح ومعلومات مفيدة هنا. * إذا كنت لا تريد رؤية اللافتة، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "اتفاقية التسويق والترويج" في معلوماتي < حسابي.
المعلومات الإحصائية	يتم عرض معلومات الإحصائيات، مثل وقت المسح، الحالة التي تم إنشاؤها، المختبر الأكثر طلبًا، إلخ.
تنزيل Medit Link	يوفر الزر رابط تنزيل Medit Link.
لوحة التحكم	تستند جميع المعلومات الإحصائية إلى معلومات الـ Dashboard الخاص بك. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل في لوحة التحكم.

إلغاء الاشتراك في Medit Insights

قم بتعطيل "الاشتراك في Medit Insights" في لوحة التحكم أو انقر على "إلغاء الاشتراك" في البريد الإلكتروني المستلم.

Case Box/Work Box

تظهر الـ Case Box (العيادة) أو الـ Work Box (المختبر) جميع الحالات التي أنشأها المستخدم في تطبيق Medit Link. يمكنك رؤية الملفات عبر متصفح الويب دون تثبيت برنامج منفصل.

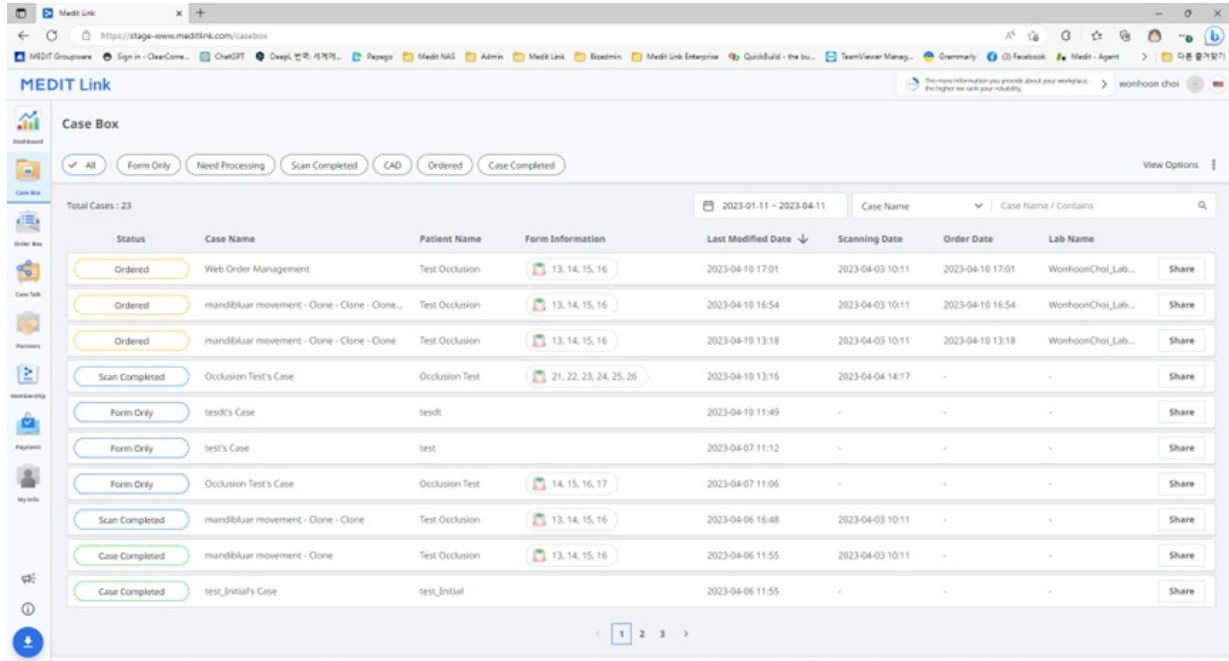

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. Below the filters, a table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Ordered	Web Order Management	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 17:01	2023-04-03 10:11	2023-04-10 17:01	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 16:54	2023-04-03 10:11	2023-04-10 16:54	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 13:18	2023-04-03 10:11	2023-04-10 13:18	WonhoonChoi_Lab...
Scan Completed	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-10 13:16	2023-04-04 14:17	-	-
Form Only	test's Case	test's		2023-04-10 11:49	-	-	-
Form Only	test's Case	test		2023-04-07 11:12	-	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-07 11:06	-	-	-
Scan Completed	mandibular movement - Clone - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-

فلتر الحالات

الفلتر حسب الحالة

يمكنك فلتر الحالات بناءً على حالاتها.

- يمكن للمستخدم النقر على الحالة التي يريد عرضها. سيعرض المتصفح فقط الحالات ذات الحالة المختارة.
- يمكن للمستخدم تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

يتم توفير نوع الحالة التالي بناءً على نوع الحساب:

All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed	Case Box (العيادة)
All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done	Work Box (المختبر)

الفلتر حسب المدة

يمكنك فلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة التي حددتها.

1. انقر على فلتر المدة.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد النطاق.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- الكل: إظهار كل الحالات.
- النطاق المُخصص: حدد تاريخي البدء والانتهاه لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال تلك الفترة.
- اليوم: عرض الحالات التي عُدلت اليوم.
- أمس: عرض الحالات التي عُدلت أمس.
- آخر 7 أيام: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 7 أيام، باستثناء اليوم.
- آخر 30 يوماً: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 30 يوماً، باستثناء اليوم.
- آخر 90 يوماً: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 90 يوماً، باستثناء اليوم.
- هذا الشهر: عرض حالات هذا الشهر.
- الشهر السابق: عرض حالات الشهر السابق.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو عُدلت خلال المدة المحددة.

الفترة حسب البحث

يمكنك الاستفادة من إمكانيات البحث للبحث عن المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة.


Case Name

Case Name / Contains

خيارات البحث بناءً على حساب العيادة/المختبر:

اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر	Case Box (العيادة)
اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box (المختبر)

تفاصيل الحالة

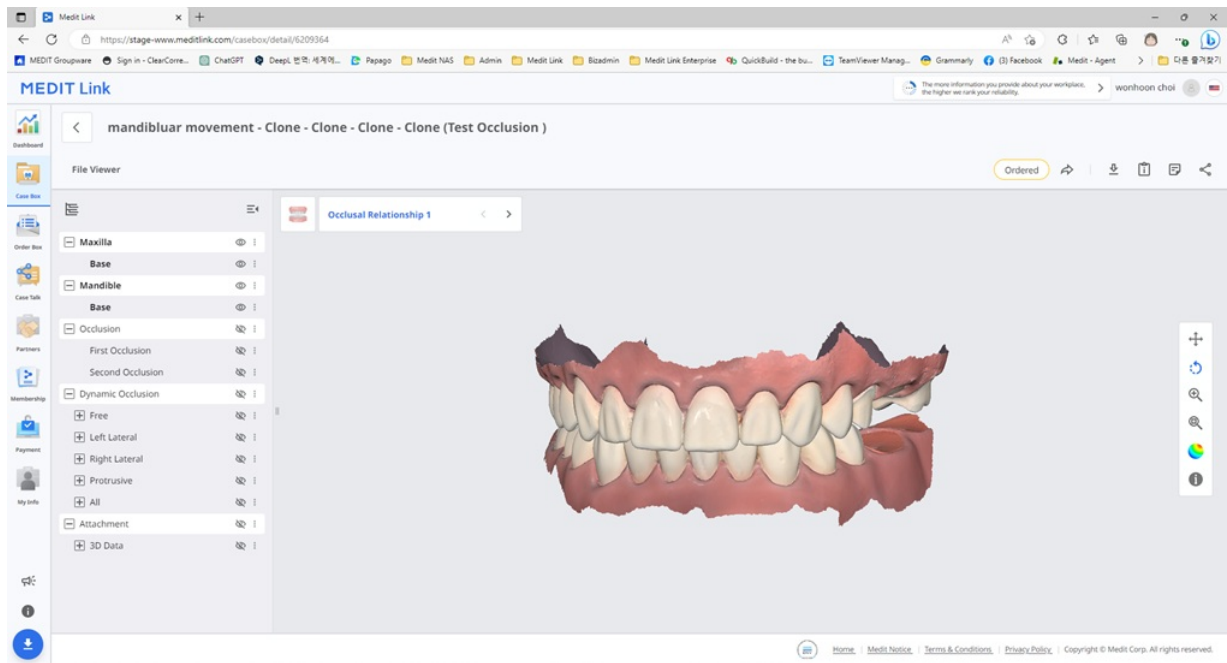

يتم توفير أدوات إدارة الحالة التالية في Case Box/Work Box.

حالة الحالة	عرض حالة الحالة.
انتقل إلى التفاصيل	توفير اختصار للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order ↔ Work Box) (In Box ↔ Work Box).
تنزيل	تنزيل الملفات الموجودة في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.
معلومات الحالة	راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.
مذكرة & علامات	أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية حول الحالة لشركائك.
مشاركة	قم بإنشاء رابط للمشاركة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشترك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari بدون تثبيت برامج إضافية. يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية للرابط لتأمين المعلومات الخاصة.

Order Box/In Box

يعرض Order Box (العيادة) أو In Box (المختبر) الحالات المطلوبة في تطبيق Medit Link.

تفاصيل الطلب

The screenshot shows the Medit Link interface for viewing an order. The top bar includes a search bar with 'test (test)' and a user profile. The sidebar on the left has icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area is divided into two sections: a form for order details on the left and an order list on the right. The form includes fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, Expected Delivery Date, and Memo. The order list shows a table with columns for No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The total price is displayed as USD 0.00.

1	عرض اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.

علامات التبويب في Order Box/In Box

عارض الملفات	الطلب
تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.	تحقق من المعلومات التفصيلية الخاصة بالطلب، مثل رقم تعريف الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو الأعضاء المسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال "Case Talk" في تطبيق Medit Link و موقع Medit Link.

[App] Create a case in Medit Link App

[App] Create a form and scan

[App/Web] Share the case


[App/Web] Access the shared case in Case Talk menu

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

إنشاء Case Talk


يمكنك إنشاء رابط مشترك لحالة تم إنشاؤها في Case Box/Work Box.

1. ابحث عن حالة تريد مشاركتها وانقر على الزر "مشاركة" على اليمين.

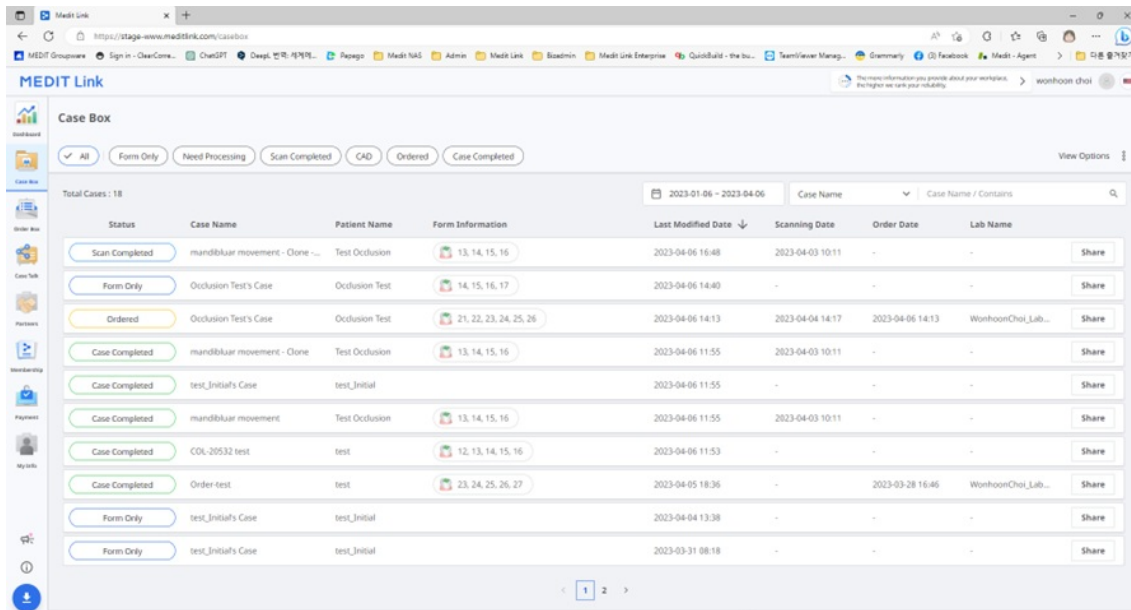

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL 20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. حدد الملفات التي تريد مشاركتها.

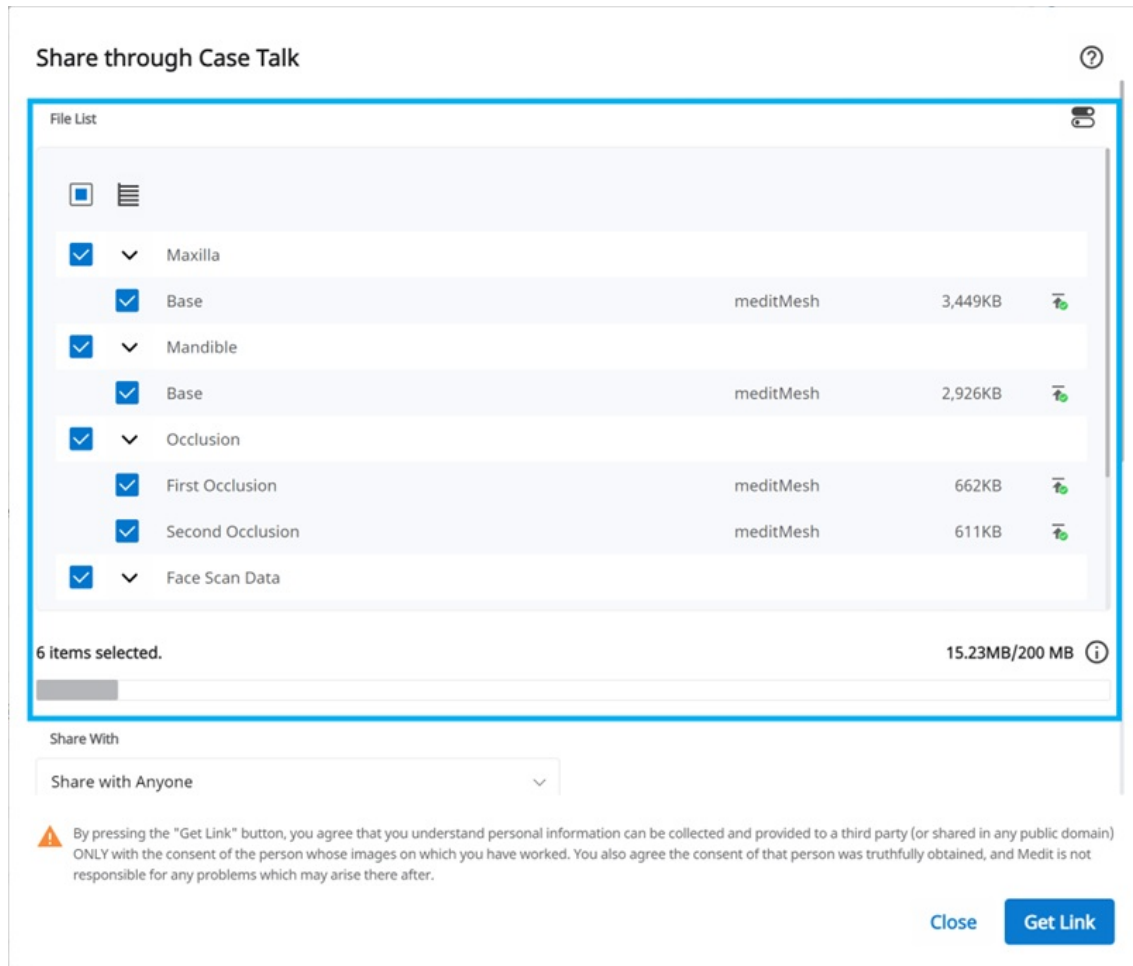

3. قم بتعيين نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة.
4. انقر على "الحصول على رابط" لإنشاء رابط مشترك.

تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

✉

+

☰

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

- المشاركة مع أي شخص لإنشاء رابط مشترك. يمكنك مشاركة الملفات مع أي شخص. - المشاركة مع أشخاص معينين لإنشاء ارتباط مشترك وإرساله إلى أشخاص محددين.	المشاركة مع
إذا حددت "مشاركة مع أشخاص معينين"، فيمكنك مشاركة الرابط مع أشخاص معينين بطرق مختلفة. - عنوان البريد الإلكتروني - رسالة قصيرة - شركاء	المشاركة عبر
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرابط. بعد انتهاء صلاحية الرابط، لن يتمكن الأشخاص الذين شاركته معهم من الوصول إلى الملفات. يمكنك تمديد فترة الصلاحية حتى 90 يومًا ابتداءً من اليوم.	تاريخ انتهاء الصلاحية
قم بتعيين رمز وصول مكون من 6 أرقام لضمان أمان البيانات.	الرقم السري
إذا حددت هذا الخيار، فسيُرى جميع الأشخاص الذين لديهم الرابط اسم المريض.	مشاركة اسم المريض
إذا قمت بتحديد هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين الذين لديهم الرابط من تنزيل الملفات.	منح إذن التنزيل
- إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستتمكن من التواصل من خلال الرابط المشترك. - إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار، سيتمكن المستلم من عرض تعليقاتك فقط ولكن لن يتمكن من إضافة تعليقاته الخاصة.	السماح بالتعليقات
يمكنك ترك رسالة في قسم التعليقات.	التعليق

تفاصيل Case Talk

يمكنك رؤية الملفات في الحالة المتشاركة. تتوفر الوظائف التالية في صفحة تفاصيل Case Talk.

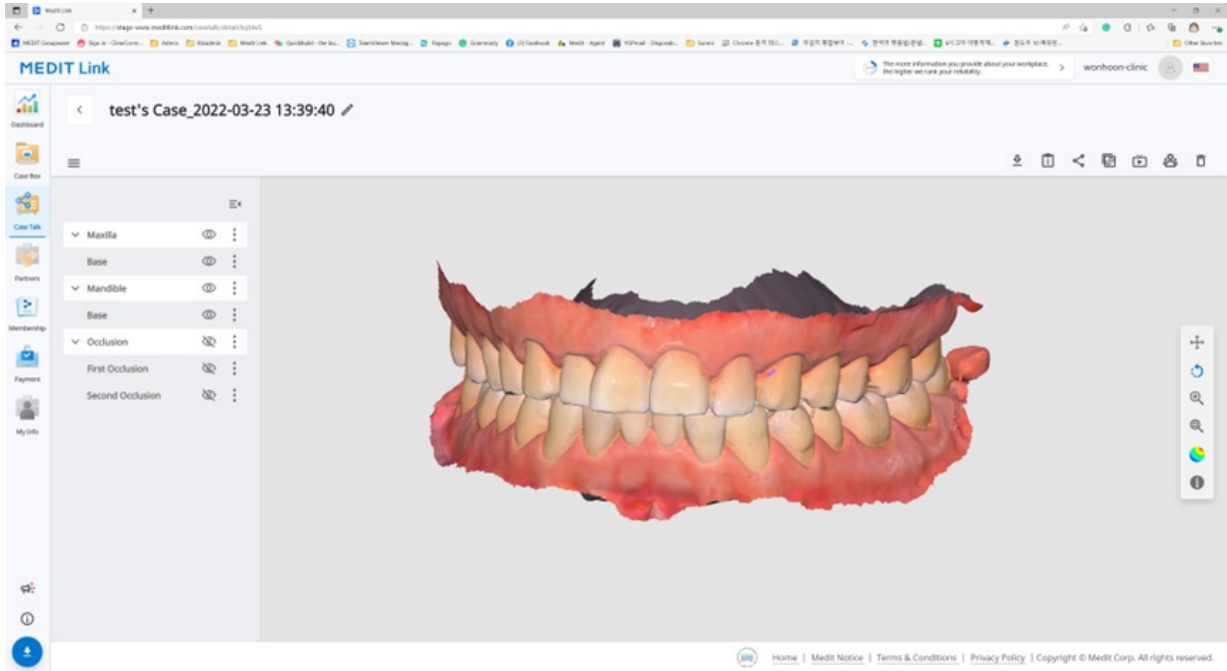

تنزيل جميع الملفات في هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.	تنزيل	
عرض معلومات مفصلة عن الحالة.	معلومات الحالة	
تعديل إعداد المشاركة.	مشاركة	
انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك.	نسخ الرابط	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين الذين يدخلون الرابط المشترك.	الحاضرين	
حذف الرابط المشترك. لم يعد الرابط المشترك المحذوف قابلاً للوصول.	حذف	

ملاحظة


الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

Web Viewer

يمكنك عرض البيانات المشتركة من خلال Case Talk في متصفح الويب.

من الممكن التواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الرابط باستخدام الملاحظات والتعليقات.

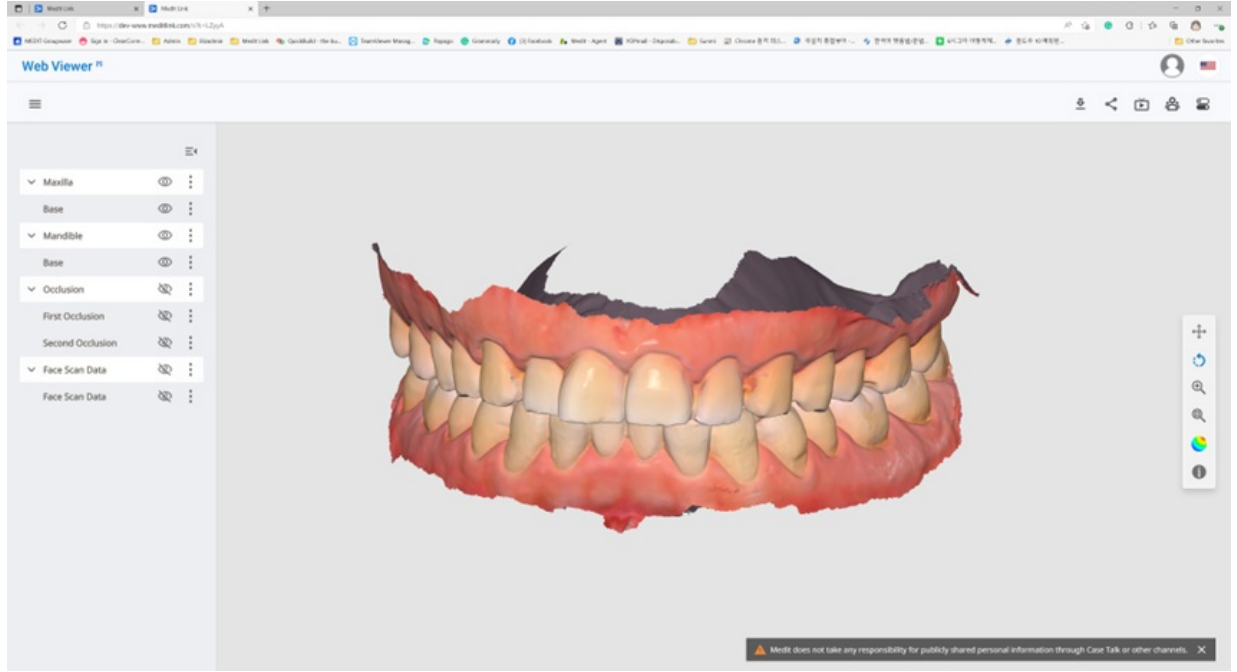

تنزيل جميع ملفات هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر.	تنزيل	
عرض معلومات مفصلة عن القضية.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين المتصلين بالرابط المتشارك.	الحاضرين	
تغيير نظام ترقيم الأسنان.	ترقيم الأسنان	


ملاحظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

التعليق

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى موقع محدد على النموذج ثلاثي الأبعاد. يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض التعليقات التوضيحية التي تضيفها.

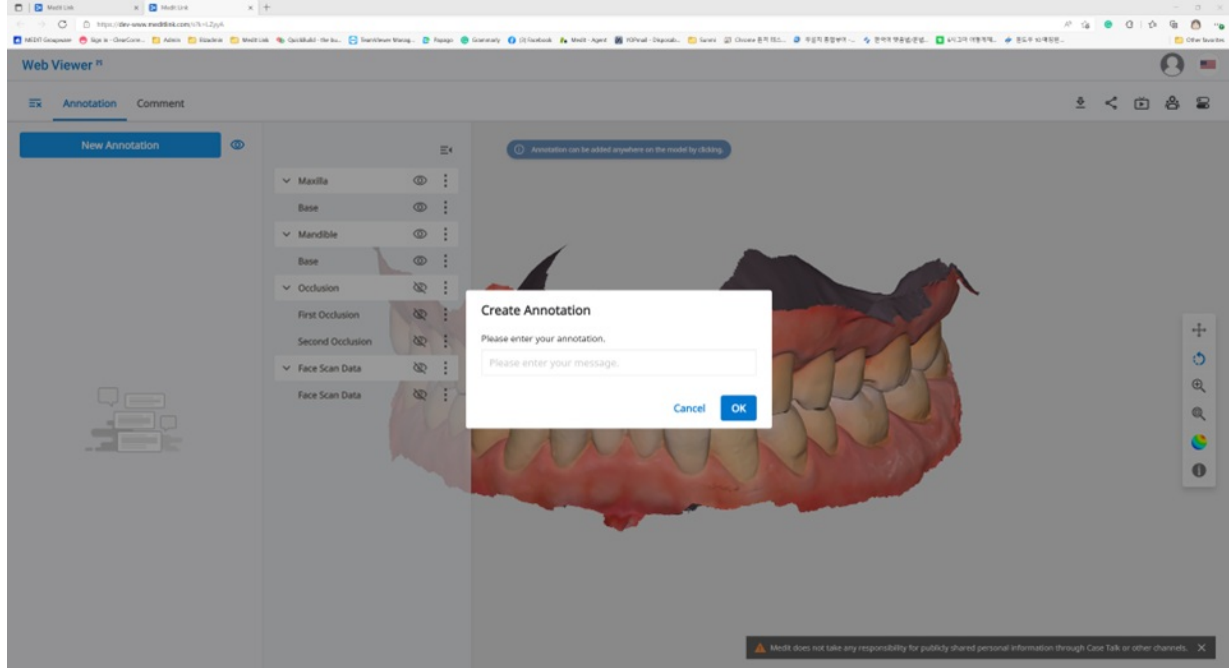

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.
• تعليقات

1. ابحث عن رمز القائمة أعلى الزاوية اليسرى وحدد علامة التبويب "تعليق". استخدم زر "تعليق جديد" لإضافة تعليق توضيحي في أي مكان على البيانات بنقرة واحدة.
2. اكتب الرسالة، ثم انقر على "OK" لحفظها.

Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية كقناة اتصال بسيطة.
انقر على التعليق التوضيحي الذي تم إنشاؤه لإدخال الرد واضغط على "إرسال".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

التعليقات

يمكنك التواصل مع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الرابط من خلال علامة التبويب "تعليق" في قائمة ال Web Viewer.

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- تعليق

مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي


يمكنك مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي.

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر

1. انقر على "بث مباشر" لمشاركة شاشة ال Web Viewer مع المستخدمين المتصلين.

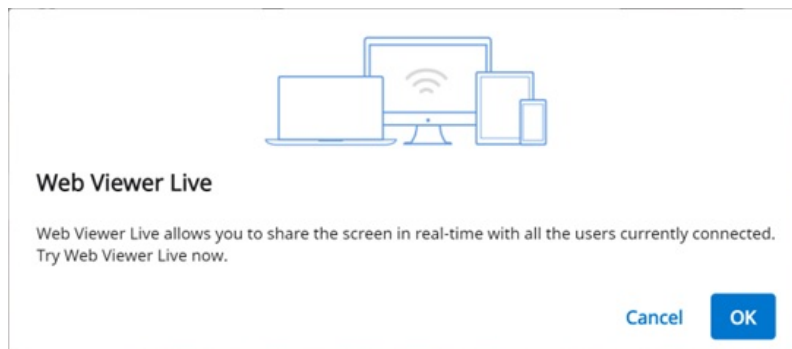

2. انقر على "OK" لبدء مشاركة شاشتك.

3. يجب على الأشخاص الآخرين الذين قاموا بالوصول إلى الرابط قبول مشاركة الشاشة.

4. يتم عرض شاشة المستخدم الذي بدأ مشاركة الشاشة متزامنة مع شاشة الشخص الذي استلم الطلب.

شجرة البيانات

يتم تجميع جميع البيانات وعرضها وفقًا للسمات الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك إظهار البيانات أو إخفاؤها، وضبط العتامة، وما إلى ذلك.

التحكم بشجرة البيانات

إظهار/إخفاء	انقر على رمز العين لإظهار البيانات أو إخفائها من العرض. تحكم في رؤية البيانات كملف مجموعة أو فردي.
العتامة	قم بتمرير الفأرة فوق عنصر مرئي لرؤية شريط تمرير التعتيم. اضبط شريط التمرير لتغيير شفافية بياناتك.

preoperationmaxillary.meditMe

يتم توفير القائمة الموسعة على الجانب الأيمن من كل عنصر من عناصر شجرة البيانات. تتضمن الخيارات التالية:

preoperationmaxillary.meditMe




- إظهار هذا فقط: إخفاء كافة البيانات باستثناء البيانات الحالية.
- إخفاء: إخفاء البيانات الحالية.
- نسخ: استنساخ بيانات الحالة الحالية.
- تصدير: احفظ البيانات على جهاز كمبيوتر محلي.
- حذف: حذف البيانات الحالية أو مجموعة البيانات.

قائمة موسعة

ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	
تدوير النموذج.	تدوير	
تكبير وتصغير النموذج.	التكبير/التصغير	
ضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	
إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.	النسيج مفعّل	
إظهار البيانات بلون واحد.	النسيج غير مفعّل	
إظهار الشبكة في الخلفية.	الشبكة مفعّلة	
إعدادات الشبكة (mm)		

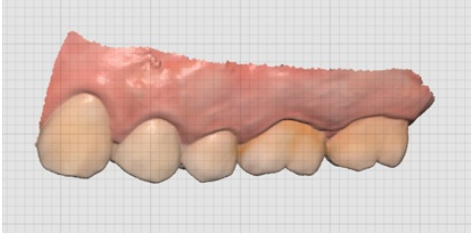تراكب الشبكة فوق النموذج. 	تراكب مفعّل	
إخفاء الشبكة.	الشبكة غير مفعّلة	

الشركاء

يمكنك البحث عن شركاء محتملين لطلب شراكة وعرض قائمة الشركاء الحاليين والشركاء ذوي العقود.


ملاحظة

الخدمات التي تستخدم Google Maps غير متوفرة على Medit Link China.

البحث عن شركاء

يمكنك البحث عن مستخدم Medit Link بناءً على اسم الشركة و/أو العنوان.

في نتائج البحث، يمكنك إرسال طلب شراكة إلى منظمة تريد العمل معها.

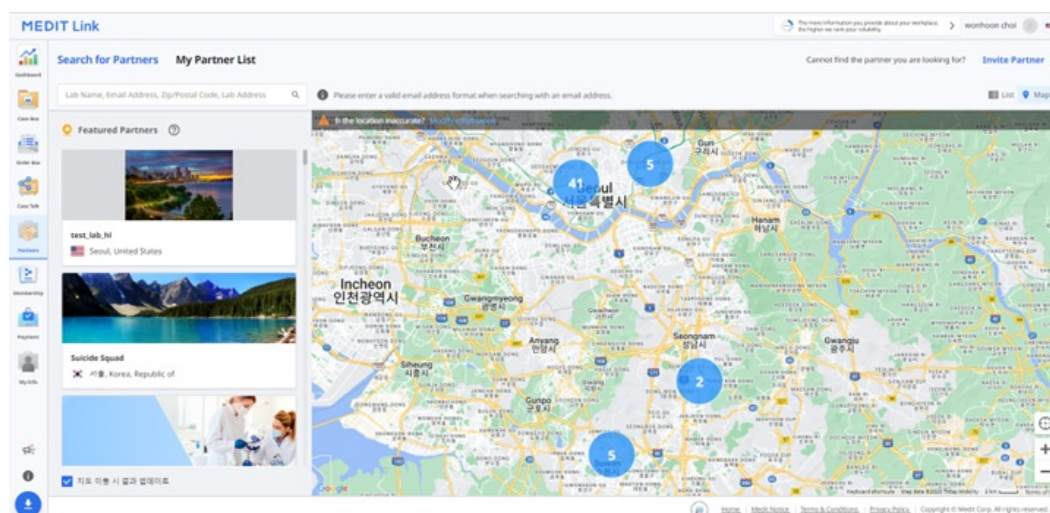


قائمة شركائي

يمكنك مراجعة شراكاتك وعقودك الحالية مع جميع الشركات الشريكة الحالية في قائمة شركائي.

كيف يختلف العقد عن الشراكة؟

بمجرد الدخول في شراكة مع شركة، يمكنك طلب إبرام عقد مع تلك المنظمة.

- إذا قبل شريكك طلب العقد، يمكنك المتابعة ودفع الطلبات المقدمة.

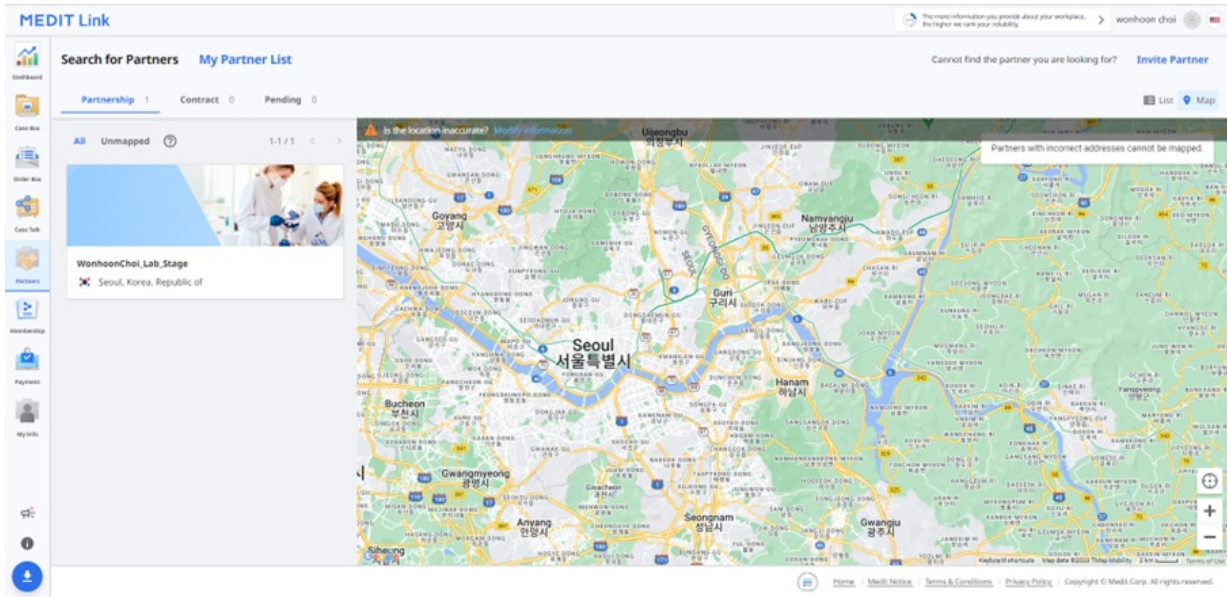

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.
• عقد

دعوة شركاء

إذا كانت هناك منظمة تريد العمل معها، فيمكنك دعوتها للانضمام إلى Medit Link. سيتم تشكيل الشراكة تلقائيًا بمجرد قبول الدعوة.

1. انقر على "دعوة شريك" في الجزء العلوي الأيسر من شاشتك.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمورد الذي تريد العمل معه وأرسل إليه دعوة مع طلب شراكة.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. بمجرد قبول المنظمة المدعوة الدعوة والاشتراك في Medit Link، سيتم إنشاء الشراكة تلقائيًا.

العضوية

تهدف سياسة عضوية Medit Link إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر اتساعاً، والتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متنوعة تعتمد على النظام الأساسي السحابي.

نهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة أكثر اتساقاً وتخصيصاً من خلال سياسة العضوية الجديدة الخاصة بنا.

نقدّم نوعي خطط عضوية:

Standard

- خطة إعتيادية مجانية لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول
- 1 GB من التخزين السحابي
- للمستخدمين الجدد

Premium

- خطة اشتراك مدفوعة
- 10 TB من التخزين السحابي
- للمستخدمين ذوو الحالات المتعددة والبيانات المختلفة
- نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد

Premium	Standard	
TB 10	GB 1	التخزين السحابي
0.99\$ في الشهر	مجاني	الرسوم الشهرية
* لا يحسب التخزين السحابي المساحة التي تشغلها البيانات الأولية.		

ملاحظة

ستكون خطط العضوية متاحة على Medit Link China. يمكنك الحصول على خطة Premium مجاناً حتى الإصدار الرسمي للميزة.

العضوية

خطتي

في القسم الأيسر، يمكنك رؤية خطة العضوية الخاصة بك. هنا يمكنك أيضًا تغيير وضع اشتراك عضويتك في أي وقت.

My Plan



Standard
Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Subscribe](#)

التخزين السحابي

في القسم الأيمن، يمكنك إدارة التخزين السحابي الخاص بك.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All 1 Week Ago 1 Month Ago 6 Month Ago 1 Year Ago

13.74 GB / 10 TB

☐ Total Selected 0.00 KB [Delete](#)

☐ **Raw Data** 147.52 GB
Remove raw data.
Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ **Result Files & Attachments** 13.74 GB
Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

قم بتعيين الفترة التي يتم حذف البيانات بعدها.

- الكل: رؤية كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مرّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مرّ شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مرّت سنة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مرّ عام على إنشائها.


الفترة المحددة

البيانات الخام	لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الأولية من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة، إلخ.
النتائج & المرفقات	تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في السحابة. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.
الحذف	قم بإزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة.

الاشتراك

إذا كنت تستخدم حاليًا الخطة الإعتيادية أو الPremium برمز استرداد، فيمكنك الاشتراك في عضوية Premium. يتم الدفع من خلال خدمة (Stripe) (www.stripe.com).

1. انقر على الزر "اشترك".

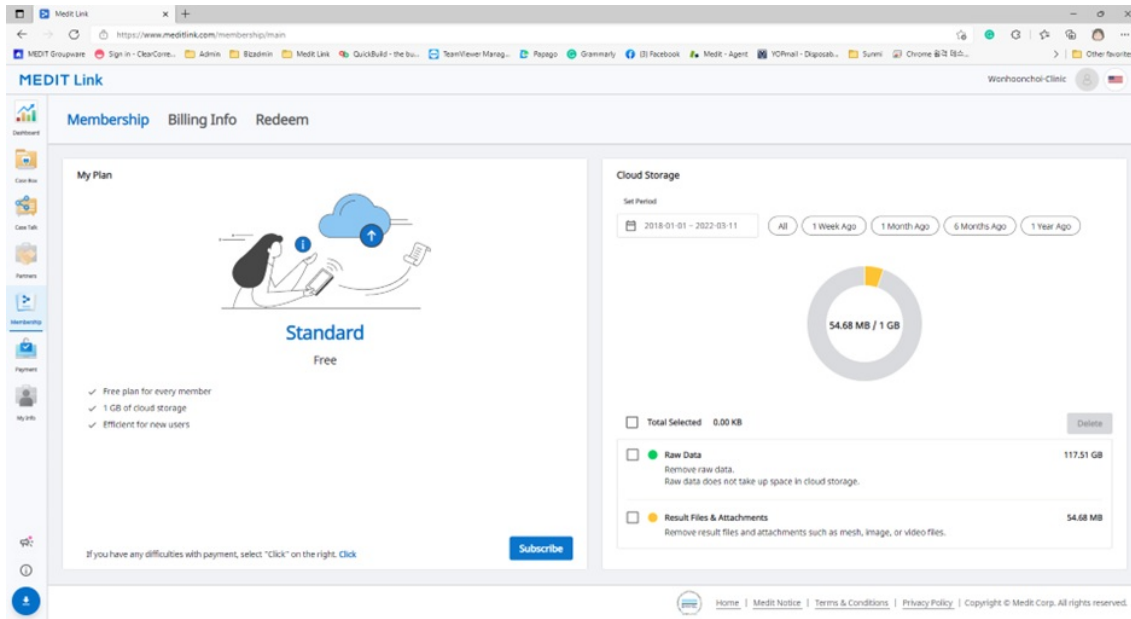

2. تحقق من وصف خطة Premium وانقر على "اشترك" مرة أخرى.

Subscribe Membership



Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. تحقق من السعر والشروط وأدخل المعلومات اللازمة للدفع. بعد ذلك، انقر على "اشترك".

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic \$0.99

Billed daily

Subtotal \$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription -\$0.99

100% off for a day

Total due today \$0.00

Powered by **stripe** | [Terms](#) [Privacy](#)

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234	VISA
MM / YY	CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. قد يستغرق الدفع عدة ثوان. عند الانتهاء، سترى رسالة التأكيد.

Subscribe Membership



Payment Successful.


[Invoice](#)

[Close](#)


إلغاء الاشتراك

يمكنك إلغاء الاشتراك من العضوية في أي لحظة. بعد إلغاء الاشتراك، سيظل بإمكانك استخدام عضوية Premium للأيام المتبقية من الشهر المدفوع. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابية، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.

1. انقر على "إلغاء الاشتراك".

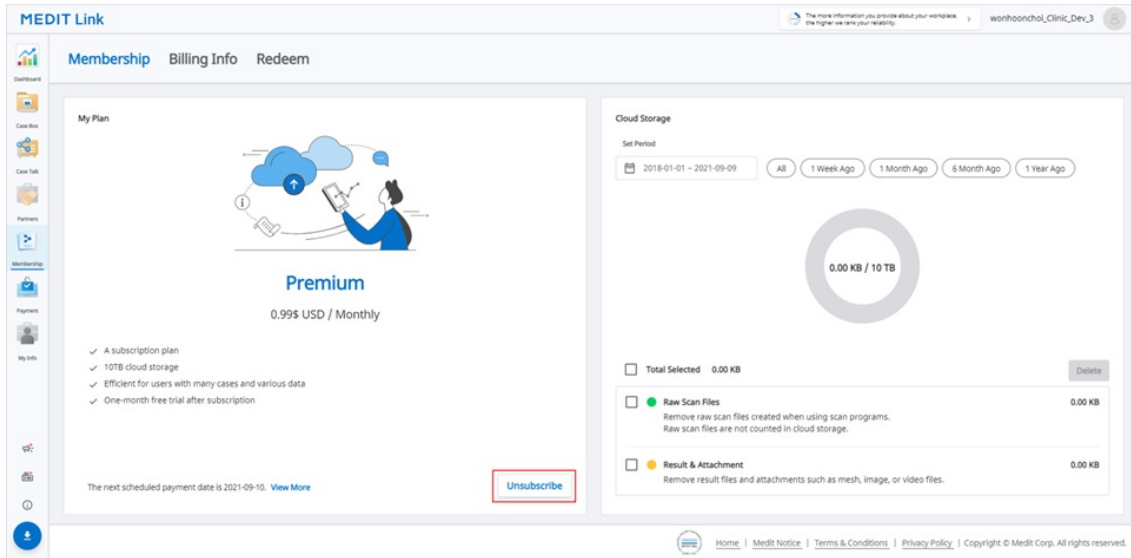

2. انقر على "إيقاف الاشتراك".

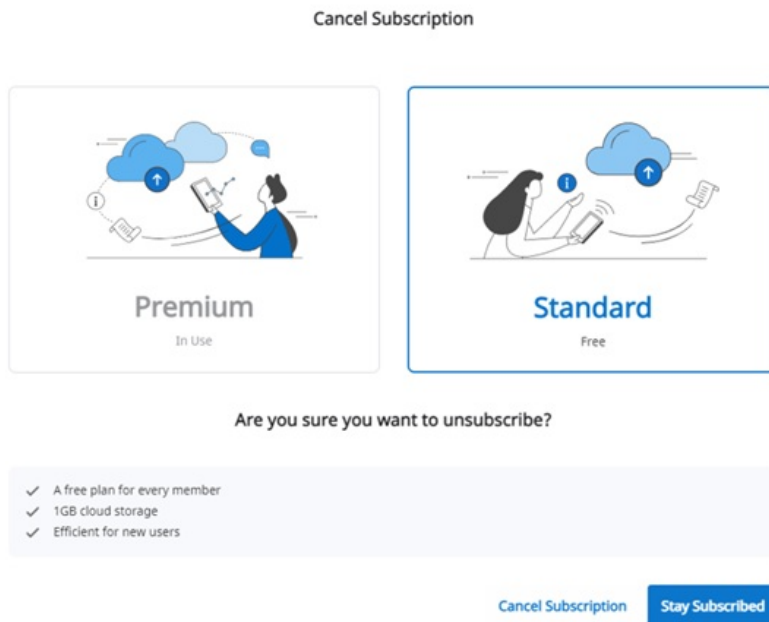

3. لتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك، انقر على "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى في النافذة المنبثقة الجديدة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. تم إلغاء اشتراكك.

5. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابي، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

معلومات الفواتير

يمكنك التحقق من سجل الدفع لاشتراكات العضوية، بما في ذلك فاتورة لكل دفعة. يمكنك أيضًا إضافة أو تغيير طريقة الدفع، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من الدفعة المجدولة التالية.

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****(11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | [Medit Notice](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

كيفية إضافة طريقة دفع

1. انقر على "تعديل طريقة الدفع".

MEDIT Link

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****(11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | [Medit Notice](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. انقر على "إضافة طريقة دفع".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على "أضف".

Add payment method

Card information

 Card number	MM / YY
---	---------

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. سيتم تعيين طريقة الدفع المضافة كطريقة افتراضية واستخدامها للدفع التالي.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

كيفية تغيير طريقة الدفع

1. انقر على رمز القائمة الموسعة بجوار طريقة الدفع التي تريد تغييرها في نافذة حوار الفوترة.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. انقر على "جعله افتراضياً" لتعيين البطاقة المحددة كطريقة الدفع الافتراضية.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

الاسترداد

قم بتسجيل رمز الاسترداد المقدم كجزء من العرض الترويجي. يمكنك استخدام عضوية Premium مع رمز الاسترداد.

تسجيل رمز الاسترداد

1. أدخل رمز الاسترداد وانقر على "تسجيل".

Dashboard

Case Box

Case Tab

Partners

Membership

Payment

My info

...

...

...

...

...

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

Home

Medit Notice

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. اقرأ الإشعار واختر "تسجيل" أو "تطبيق" في مربع الحوار المنبثق.
 - تسجيل: قم بتسجيل رمز الاسترداد. يمكنك تفعيل واستخدام رمز الاسترداد لاحقًا بعد التسجيل.
 - تطبيق: سجل وقم بتفعيل رمز الاسترداد. ينطبق الخصم الترويجي على الفور.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

تفعيل رمز الاسترداد

يمكنك تسجيل رموز استرداد متعددة، لكنك تحتاج إلى تفعيل الرمز الذي تريد استخدامه.

1. انقر على الزر "تفعيل" بجوار الرمز الذي تريد استخدامه.
 إذا لم يكن هناك رمز بحالة "نشط"، فسيتم تطبيق الرمز الذي تختاره على الفور. إذا تم تفعيل أي رمز بالفعل، فستتغير حالته إلى "Waiting"، وسيتم استخدام الرمز الذي اخترته بدلاً من ذلك. عند انتهاء صلاحية رمز الاسترداد الحالي، سيتم إعادة تنشيط الرمز المنتظر تلقائيًا.

ملاحظة 2.

يمكن أن يكون رمز واحد فقط في حالة "Waiting".

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

الدفع

ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.
• الدفع

تفاصيل الدفع (حسابات العيادة & المختبر)

يمكنك التحقق من تاريخ الدفع والمعاملات بينك وبين شركائك من خلال صفحة تفاصيل الدفع.

معلومات حساب الدفع (حساب المختبر فقط)

Payment Detail
Check the details of payment information here.
Total Number of Transactions : 0 Case

2020-08-12 ~ 2020-09-10

All Partners

هذه الميزة متاحة فقط لحساب مشرف المختبر للسماح بإدخال المعلومات للحصول على دفعات من شركائك.

- يجب عليك إدخال معلومات حساب الدفع الخاص بك ليتمكن شركائك من تقديم الطلبات من خلال نظام الدفع عبر الإنترنت.

ملاحظة

إذا اخترت بلدًا يدعم Stripe، فسيتم توجيهك إلى Stripe بالنقر على زر إنشاء الحساب في Stripe. يمكنك تحديد كوريا الجنوبية، ثم إدخال رقم حساب مصرفي محلي لتلقي الدفع، وسيعالج KCP دفعاتك.

My Info

حسابي

هنا يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات التي أدخلتها أثناء التسجيل والتحقق من حالة عضويتك.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) [▼](#)

Country
Korea, Republic of [▼](#)

2. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

منظمتي (حساب المشرف فقط)

يمكنك هنا مراجعة المعلومات الخاصة بمنظمتك وتعديلها. هذا القسم متاح فقط لحسابات المشرف.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[Address Information](#) [Organization Information](#) [Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.
1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of [▼](#)

State/Province *
Seoul

3. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

الماسح الضوئي الخاص بي

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز المتصل للحساب.

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days

قائمة أسعار (حساب مشرف المختبر فقط)

يمكنك إدخال المنتجات التي يقدمها مختبرك ومعلومات السعر لكل منتج.

My Account
My Organization
My Scanner
My Price List

Teeth

Arch

AED (إ.إ.)

All (99/557)
Inlay (8/12)
Onlay (8/12)
Coping (10/17)
Denture Coping (5/5)
Crown (15/26)
Pontic (23/36)
Post & Core (3/4)
Veneer (8/11)
Implant Crown (12/53)
Custom Abutment (2/3)
Surgical Guide (1/1)

Offset Substructure (4/5)
Partial Denture (8/7)
Diagnostic Wax-Up (0/1)
Custom Abutment + Implant Crown (0/159)
Custom Abutment + Coping (0/45)
Post & Core + Crown (0/100)
Post & Core + Coping (0/60)

☐	Name	Type	Method	Material	Price
☒	إنلعي زيرونيا	Inlay	-	Zirconia	\$6.03
☒	إنلعي كولد	Inlay	-	Gold	1.03
☒	إنلعي بريس سيراميك	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
☒	إنلعي ريسين	Inlay	-	Resin	3.03
☒	إنلعي هايبريد سيراميك	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
☒	إنلعي غلاس سيراميك	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒	إنلعي كمپوزيت ريسين	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒	إنلعي e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

ملاحظة

- بمجرد التعاقد مع شريك، يمكن لشريك طلب منتجاتك بناءً على قائمة المنتجات هذه والسعر.
- إذا كان لديك شراكة مع شريك فقط، فإن Medit Link لا يدعم الطلبات التي تتطلب معلومات عن الأسعار.

قائمت أخرى

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

معلومات عن Medit

يمكنك الحصول على معلومات مختلفة حول استخدام Medit Link. قم بالوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل Medit Academy و Medit Academy YouTube و مركز مساعدة Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

تنزيل تطبيق Medit Link

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من مثبت البرنامج من الويب. هذه القائمة مفيدة عندما تفقد المثبت المتوفر في حزمة المنتج، أو إذا كان لديك مثبت قديم.

ملاحظة

يتم تحديث Medit Link تلقائيًا عندما تكون متصل بالإنترنت.

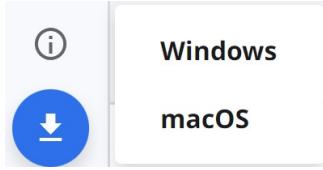

Windows

macOS

نظرة عامة

1	شريط العنوان	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.
2	القائمة	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < القائمة للحصول على معلومات مفصلة.
3	الأدوات والوظائف	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < عارض الملفات و تطبيق Medit Link < خيارات العرض للحصول على معلومات مفصلة.
4	قائمة الحالات	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < التصفية والبحث للحصول على معلومات مفصلة.

نظرة عامة عن الـ Box


سير العمل	حساب العيادة	حساب المختبر
الخطوة 1	إنشاء حالات	Case Box: إنشاء حالات والبحث بسهولة عن الحالات وعرضها باستخدام خيارات فلترة وبحث متنوعة. بالحالة التي تم إنشاؤها، يمكنك الارتباط مباشرة ببرامج المسح وبرامج CAD للعمل عليها.
الخطوة 2	ترتيب/إدارة الحالات	Order Box: إدارة الحالات المطلوبة. وظائف لإدارة العملية من الطلب إلى إكمال الحالات.
الخطوة 3	العمل على المسح/CAD	Work Box: إدارة الحالات التي تمت إعادة توجيهها من In Box أو التي قمت بإنشائها. يمكنك الارتباط مباشرة ببرامج المسح وبرامج CAD للعمل عليها.
الخطوة 4	مشاركة الحالة	Case Talk: شارك الحالات التي تم إنشاؤها مع قيود، دون قيود، مع أشخاص محددين، أو غيرهم من الأعضاء المسجلين في Medit Link.
الخطوة 5	العمل التكميلي أو الإضافي	App Box: استخدم مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تكمل سير عمل طب الأسنان الرقمي الخاص بك. يمكنك تنزيل وتثبيت Medit أو تطبيقات طرف ثالث.
الخطوة 6	حذف/استعادة حالات	Trash Box: عرض الحالات أو استعادتها أو حذفها نهائيًا من الـ Trash Box.

يلخص الجدول أدناه الBoxes المتوفرة في كل نوع من أنواع حسابات العيادات والمختبرات.

App Box	Trash Box	Case Talk	Work Box	In Box	Order Box	Case Box	نوع الحساب	
O	O	O	X	X	O	O	مشرف	حسابات العيادة
O	O *ميزة الاستعادة فقط	O	X	X	X	O	عضو	
O	O	O	O	O	X	X	مشرف	حسابات المختبر
O	O *ميزة الاستعادة فقط	O	O	X	X	X	عضو	

شريط العنوان

يوفر شريط العنوان وصولاً سريعاً إلى ميزات مثل حالة الشبكة والتزامن مع التخزين السحابي والإشعارات.

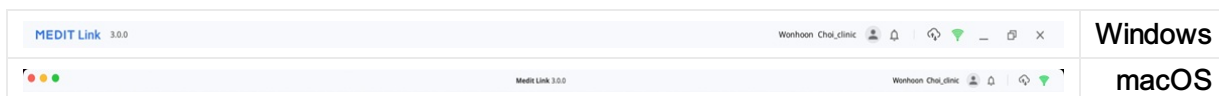

My Information

تحتوي My information على معلومات المستخدم الأساسية مثل صورة الملف الشخصي واسم المؤسسة وعنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

كما يوفر خيار تسجيل الخروج واختصاراً لصفحة حسابي على موقع Medit Link.

My Information

1

2

Organization Name

Wonhoonchoi_Clinic_Dev

Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Name

Wonhoonchoi_Clinic

3

Close

4

Log Out

Edit

>

1	إظهار صورة الملف الشخصي.
2	عرض اسم المؤسسة وعنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم.
3	تسجيل الخروج من الحساب الحالي.
4	انتقل إلى Medit Link Web أثناء تسجيل الدخول بالحساب الحالي. يمكنك عرض وتعديل وإدارة معلومات الحساب التي أدخلتها عند التسجيل.

الإشعارات

يمكنك مشاهدة الإشعارات المتعلقة بالعقود والأوامر وآليات العمل.

Notification

1
☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
2020-08-20 오후 5:20

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order
2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work
2020-08-14 오후 6:33

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work
2020-08-14 오전 10:15

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

1	حدد المربع لعرض الرسائل غير المقروءة فقط.
2	انقر على أي إشعار للانتقال على الفور إلى الحالة أو صفحة الويب ذات الصلة.

مدير تزامن الحالات

يساعدك مدير تزامن الحالات على تحميل وتنزيل الحالات في Medit Link. يمكنك تحميل عدة حالات على السحابة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

Total Count: 240

Cancel All

Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download 
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download 
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download 
☐ test's Case1111111111111111111111121312312313131233311111111111111111111444444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download 
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download 
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download 

Close

التحميل

إجمالي الحالات/الحالات المحددة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تحميلها.
تحميل الكل	تحميل كل الحالات على السحابة.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التحميل.
	تحميل الحالة على السحابة.
	إلغاء تحميل الحالة.
	محاولة تحميل الحالة مجدداً.

التنزيل

إجمالي الحالات/الحالات المختارة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تنزيلها.
تنزيل الكل	تنزيل جميع الحالات على جهاز الكمبيوتر.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التنزيل.
	تنزيل الحالة على جهاز الكمبيوتر.
	إلغاء تنزيل الحالة.



حالة الشبكة

يمكنك Medit Link من استخدام جميع الميزات بسلسلة عندما تكون متصلاً بشبكة.

لمساعدتك في التحقق من حالة اتصال الشبكة في الوقت الفعلي، يتم عرض أيقونة حالة الشبكة في شريط العنوان.

إذا لم يكن اتصال الشبكة جيدًا، فقد تواجه القيود التالية:

- سيتم تقييد بعض الوظائف، مثل طلب حالة، إنشاء حالة، المشاركة عبر Case Talk والتزامن مع التخزين السحابي.
- يمكن تقليل الأداء العام للخدمة بسبب تأثير الشبكة.

في هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى وضع عدم الاتصال لأداء المهام الأساسية ثم استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال بالإنترنت بمجرد اتصالك.


ملاحظة

يشير رمز الشبكة إلى سرعة الاستجابة بين المنطقة الحالية و AWS (Amazon Web Service). لا يمثل ذلك سرعة الشبكة لديك، لذلك قد تظهر أحيانًا الحالة على أنها رديئة أو سيئة، على الرغم من أن سرعة الشبكة لديك سريعة بدرجة كافية.

إذا كانت العملية الأخرى تستخدم نفس الشبكة، فقد تظهر السرعة على أنها ضعيفة أو سيئة، وقد يكون الأداء العام لـ Medit Link سيئًا. في هذه الحالة، يرجى عدم مشاركة الشبكة مع العمليات الأخرى. على سبيل المثال، تُعد ميزة "تحميل البيانات الخام" تشكّل حملاً كبيرًا على الشبكة. إذا أظهر الرمز حالة سيئة أو رديئة، فانتقل إلى الإعدادات > تحميل البيانات الخام وقم بإيقاف تشغيل "التحميل تلقائيًا".

Dashborad


يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجداول - في كل من تطبيق وموقع Medit Link.

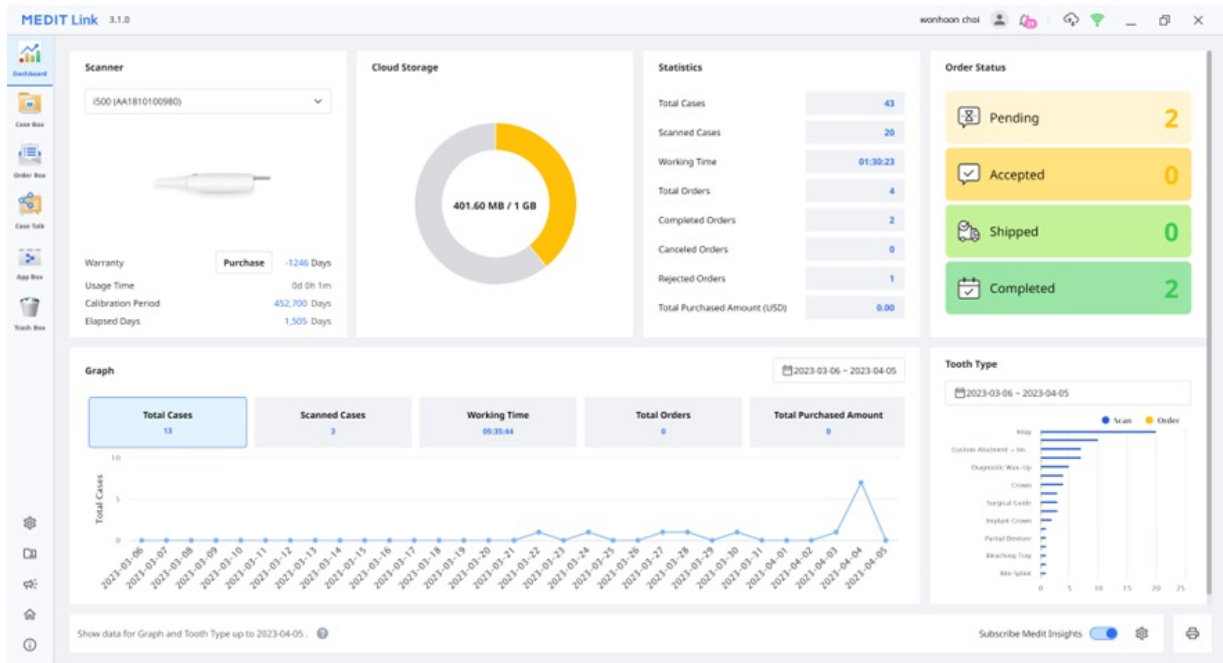

ملاحظة

يرجى الرجوع إلى موقع Medit Link > Dashboard لمزيد من المعلومات حول Dashboard و Medit Insights.

Case Box/Work Box

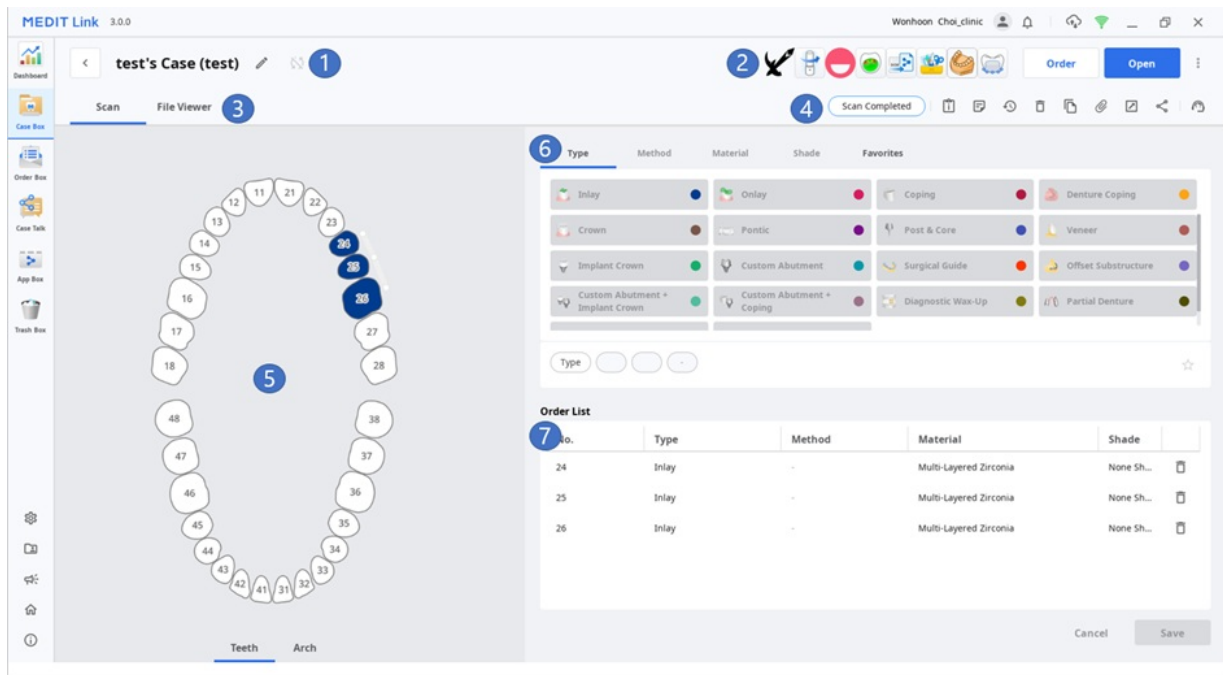

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير الميزات الرئيسية المتاحة: الطلب/المسح (مفتوح) /أزرار الطلب وأيقونات التطبيقات.
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: النموذج، CAD، وعارض الملفات.
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات.
5	إظهار واجهة مستخدم تسجيل النموذج لبرنامج CAD المحدد.
6	توفير معلومات النوع/الطريقة / المادة/اللون للمستخدمين للاختيار لرقم السن المحدد.
7	عرض النوع/الطريقة/المادة/معلومات اللون المطبقة على الأسنان المختارة.

علامات التبويب في Case Box/Work Box

عارض الملفات	CAD	النموذج
عرض ملفات النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة برامج المسح و CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.	توفر علامة التبويب CAD واجهة مستخدم لتعيين خيارات CAD. يتم تمرير المعلومات التي تقوم بإعدادها إلى برنامج CAD المتصل.	توفر علامة تبويب النموذج واجهة مستخدم لإدخال المعلومات الأساسية للمسح الضوئي، مثل النوع والطريقة والمواد الخاصة بأرقام الأسنان وخيارات المسح. يتم تمرير المعلومات التي تدخلها إلى برنامج المسح الضوئي المتصل واستخدامها كمعلومات طلب عند تقديم طلب مع شريكك.

الوظائف في Case Box/Work Box

يتم توفير الوظائف التالية في Case Box/ Work Box.

حالة	إظهار حالة الحالة.
انتقل إلى التفاصيل	توفير اختصارًا للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box ↔ Work Box).
معلومات الحالة	راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.
المذكرة & العلامات	أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.

	تاريخ الحالة	يوفر معلومات مفصلة حول تاريخ الحالة. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	حذف	حذف الحالة. لا يمكنك حذف الحالات المطلوبة أو الحالات التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال.
	استنساخ	إنشاء نسخة من الحالة الحالية في Case Box. يتم نسخ جميع البيانات إلى الحالة المستنسخة. تساعد هذه الميزة على تكرار معلومات العلاج لنفس المريض أو تقديم طلب إضافي بنفس المعلومات أو الملفات.
	إرفاق	إرفاق ملفات بتنسيقات مختلفة.
	تصدير	تصدير ملفات المسح الضوئي أو نتائج CAD إلى جهاز الكمبيوتر المحلي. يمكنك اختيار تنسيق الملف المفضل لديك عند تصدير الملفات. يمكن استخدام الملفات المصدرة لمزيد من العمل في برامج CAD و CAM.
	مشاركة	إنشاء رابط للمشاركة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشارك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari دون تثبيت برامج إضافية. يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية الرابط لتأمين المعلومات الخاصة.
	إرسال طلب دعم	انتقل إلى صفحة مركز مساعدة Medit لإرسال طلب دعم.

Order Box/In Box

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات التفصيلية للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.

علامات التبويب في Order Box/In Box

الطلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطلب، مثل رقم الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددتهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو أعضاء مسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال Case Talk في تطبيق Medit Link وموقع Medit Link.

ملاحظة

تتطلب خدمة Case Talk اتصالاً بالإنترنت.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Cho_clinic

Trash Box

☐ Restore ☐ Delete Total Count: 30

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Cho_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Cho_clinic	4,469 KB

الإعدادات

يرجى الرجوع إلى تطبيق Medit Link < الإعدادات للحصول على معلومات تفصيلية في نافذة الإعدادات.

إدارة المريض

يمكنك إضافة، تعديل، حذف، أو دمج مرضى في نافذة إدارة المرضى.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All / Search / Contains

+ New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_JScan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_JScan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试患者				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Close

إضافة مريض جديد

1. انقر على "مريض جديد".

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. املأ المعلومات المطلوبة في مربع حوار "المريض الجديد"، ثم انقر على "حفظ".

حذف مريض

ملاحظة

يمكنك حذف مريض فقط في حالة عدم وجود حالات للمريض.

1. حدد المريض الذي تريد حذفه من القائمة.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases. Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected. Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Patients with No Cases

Delete Merge Patients

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	A.I Abutment?				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28	/	
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22	/	
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16	/	
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	salsjashidf				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26	/	
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25	/	

Close

2. انقر على "حذف".

دمج مرضى

يمكنك دمج جميع حالات المرضى المتعددين في مريض واحد.

1. حدد المرضى الذين تريد دمجهم من القائمة.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press Delete to remove patients from the system.

Search / Contents

Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☐	5-9_iScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试数据				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1221				26	2019-07-25	2020-09-11	

Close

2. انقر على "دمج المرضى".
3. حدد المريض الهدف الذي ترغب في دمج جميع الحالات فيه.
4. يتم دمج جميع الحالات في المريض الهدف ويتم الاحتفاظ بمعلوماته الخاصة.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

5. انقر على "تطبيق" لمباشرة الدمج.

إخطار & تحديث

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

انتقل إلى موقع Medit Link

ستصل إلى موقع Medit Link في الحساب الذي سجلت الدخول به الآن.

معلومات عن Medit

يمكنك الحصول على معلومات مختلفة حول استخدام Medit Link. قم بالوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل Medit Academy و Medit Academy YouTube و مركز مساعدة Medit.

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



الإعدادات

عام


يوفر خيارات لإعداد النظام بشكل عام.

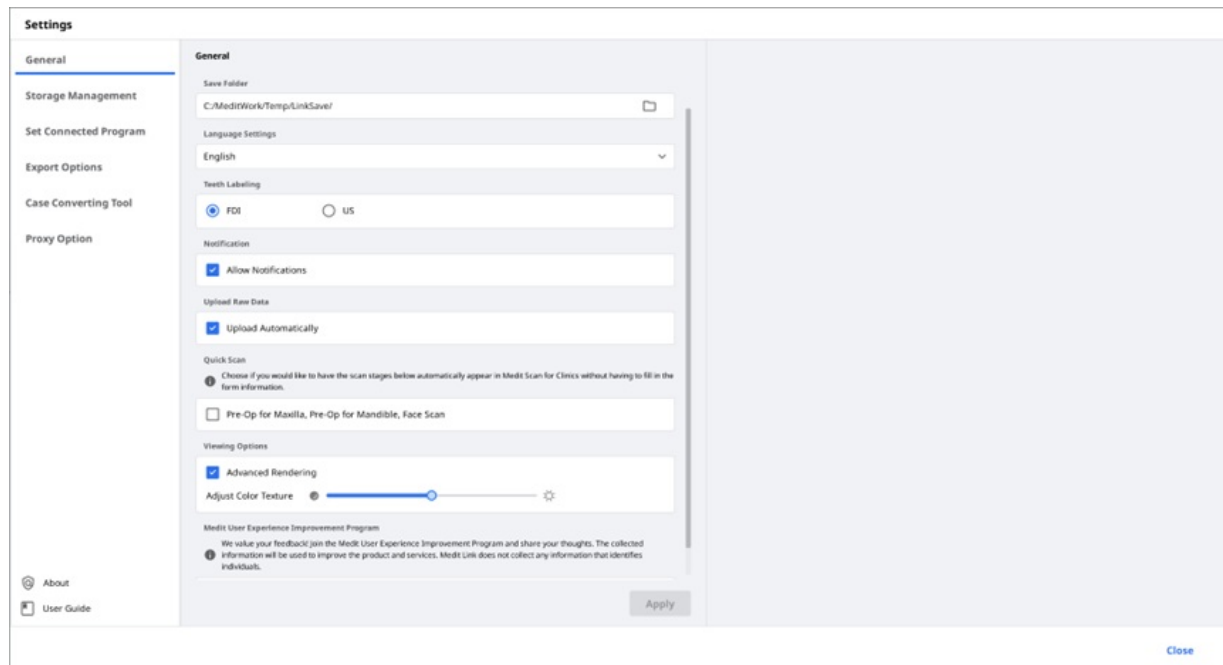

حفظ المجلد	حدد مجلدًا لتخزين نتائج البيانات التي تم إنشاؤها في Medit Link والبرامج المتصلة.	
إعدادات اللغة	حدد لغة البرنامج.	
ترقيم الأسنان	حدد نظام ترقيم الأسنان بين FDA و US.	
إشعارات	عند التحديد، ستتلقى إشعارات بتحديثات البرنامج.	
تحميل البيانات الخام	عند التحديد، يتم تحميل البيانات الخام تلقائيًا إلى السحابة. يساعد هذا في خلق نسخة احتياطية من البيانات الأصلية وإجراء مسح سلس عند استخدام Medit Link مع نفس الحساب على جهاز كمبيوتر آخر. تتطبق النسخة الاحتياطية الأصلية للبيانات السحابية فقط على البيانات التي تم الحصول عليها في Medit Scan for Clinics.	
مسح سريع	اختر ما إذا كنت تريد أن تظهر مراحل المسح أدناه تلقائيًا في Medit Scan for Clinics دون الحاجة إلى ملء معلومات النموذج. - ما قبل العملية للفك العلوي - ما قبل العملية للفك السفلي - مسح ضوئي للوجه	
خيارات العرض	معالجة متقدمة	عند التحديد، يتم عرض النموذج ثلاثي الأبعاد في عرض أكثر حيوية وواقعية.
	ضبط نسيج اللون	اضبط سطوع النموذج ثلاثي الأبعاد. * قد تختلف الألوان الناتجة قليلاً عن Medit Link عندما تفتح نفس البيانات باستخدام برامج أخرى.
برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit	انضم إلى برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit. - نستخدم المعلومات التي تم جمعها لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. - لا نجمع أي معلومات تحدد هوية الأفراد.	

ادارة التخزين

تحقق من مساحة التخزين المحلية ومساحة تخزين السحابة وقم بإدارتها.

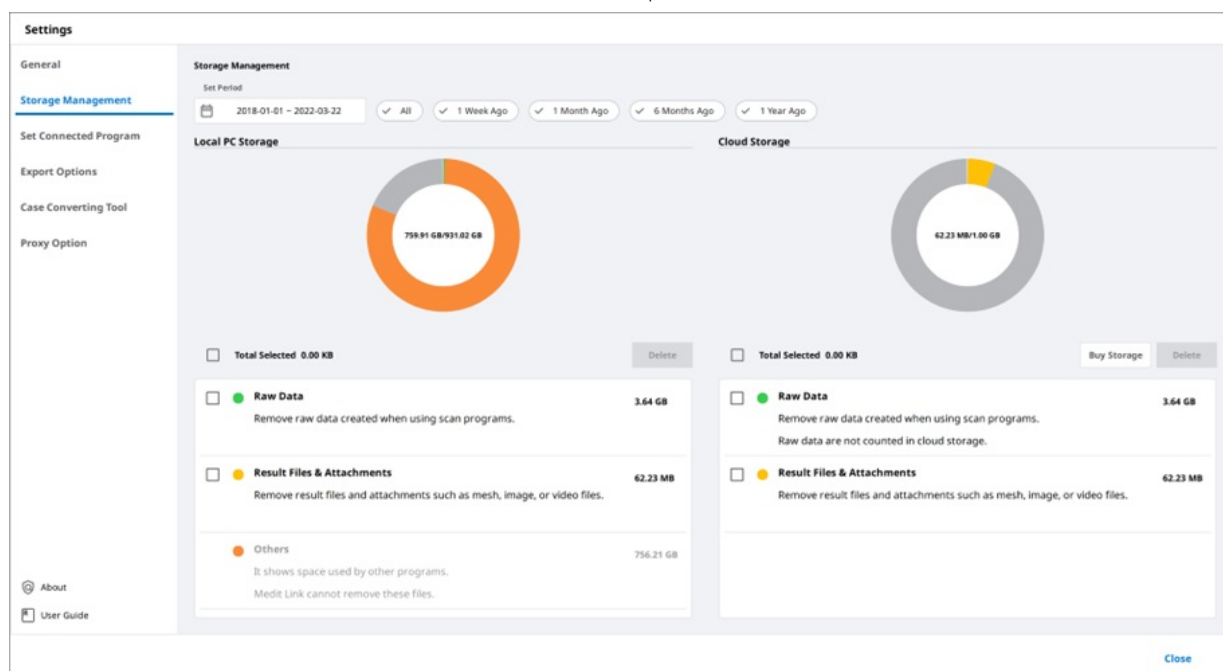

تحديد الفترة

قم بتحديد الفترة لحذف البيانات التي تم إنشاؤها خلال الإطار الزمني أدناه.

- الكل: مشاهدة كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: راجع الملفات التي مرَّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: راجع الملفات التي انقضى شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: راجع الملفات التي مرت ستة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: راجع الملفات التي مرَّ عام على إنشائها.

التخزين المحلي

قم بإدارة مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر.

البيانات الخام	قم بإزالة البيانات الخام المحددة من جهاز الكمبيوتر. إذا تم تحميل البيانات الخام بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
النتائج & المرفقات	إزالة ملفات النتائج والمرفقات من جهاز الكمبيوتر، مثل الشبكة والصور ومقاطع الفيديو. إذا تم تحميل هذه الملفات بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
آخرون	عرض الملفات المستخدمة لتشغيل النظام والبرامج الأخرى. يظهر تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا يمكنك إزالة هذه الملفات من Medit Link.
حذف	إزالة الملفات المحددة من جهاز الكمبيوتر.

التخزين السحابي


إدارة مساحة التخزين السحابي.

البيانات الخام	لا تشغل البيانات الخام مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الخام من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة، إلخ.
النتائج & المرفقات	تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في التخزين السحابي. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.

شراء تخزين	إذا كنت تستخدم خطة Standard، قم بالاشتراك في خطة Premium لتوسيع التخزين السحابي الخاص بك.
حذف	إزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة التخزين.

تحديد البرنامج المُتَّصِل

إدارة البرامج التي تدعم الدمج في Medit Link.

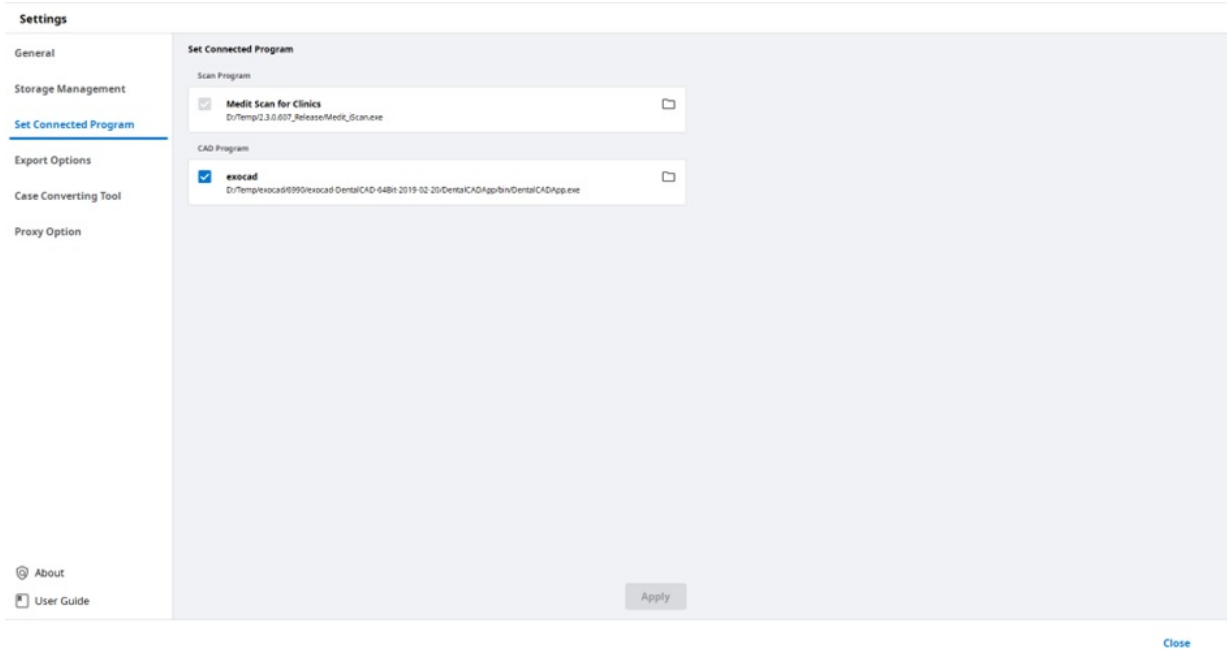

يمكنك توصيل البرامج التالية:

حساب المختبر	حساب العيادة	
Medit Scan for Clinics .Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	برنامج المسح الضوئي
exocad	exocad	برنامج CAD

ملاحظة

لا يتوفر دمج الخدمات التالية لـ Medit Link على Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

خيارات التصدير

اضبط كيفية تصدير الملفات من Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

CAD Type

Maestro

Export Files To

C:\Users\Medit-Worhoonchoi\Desktop/test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

meditMesh

Obj

PLY

STL

Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

JPG

JPEG

PNG

BMP

Compress & Combine

Compress Files

Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

Always ask when exporting

Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Name

Rule for File Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Name

Apply

Close

نوع CAD	حدد برنامج CAD الذي تريد استخدامه للتصميم. سيقوم البرنامج بضبط النتائج بناءً على اختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.
تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة النهائي.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
الضغط & الجمع	ضغط الملفات: ضغط جميع النتائج في ملف واحد. دمج شبكة فردية: دمج جميع النتائج للفاك العلوي أو الفاك السفلي في ملف واحد. عند استخدام بعض البرامج التي لا يمكنها استيراد ملفات متعددة والعمل بها، يمكنك دمجها في برنامج واحد للعمل في تلك البرامج.
الخيارات عندما يكون نفس المجلد أو الملف موجودًا بالفعل.	اختر الإجراء الافتراضي لحالات وجود نفس اسم المجلد أو الملف في المسار الهدف. - اسأل دائمًا عند التصدير. - تصدير ملف جديد والكتابة فوق الملفات الموجودة. سيتم فقد الملف المخزن حاليًا. - إنشاء مجلد وتصدير الملفات
قواعد اسم المجلد	حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات. سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتحديد القواعد. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب

تحديد قواعد لاسم الملف المصدر. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب	قواعد اسم الملف
---	-----------------

أداة تحويل الحالة

نقل الحالات بين الحسابات المختلفة.

The screenshot shows the 'Case Converting Tool' interface. On the left is a sidebar with 'Settings' and 'General' selected. The main area is divided into 'Export' and 'Import' sections.

Export Section:

- Buttons: 2020-09-13 ~ 2020-09-20, All, Search / Contains
- Table: Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 바보바보바보바보	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오전 10:19

File Name: CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export button

Import Section:

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Import button

File List:

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55

Close button

كيفية استخدام أداة تحويل الحالة

1. افتح Medit Link وانقر على "الإعدادات".

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_Clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

2020-09-13 - 2020-09-20 All Search / Contains

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 백승남의대스캔2	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teel...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medic-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:/Users/Medic-Wonhoonchoi/Documents/ Import


File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-18 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55

Close

3. في قسم الاستيراد، انقر على رمز المجلد لتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن ملف meditex الذي تريد استيراده.


4. انقر على "إستيراد" وتحقق من الملف المستورد في قائمة الملفات أدناه.

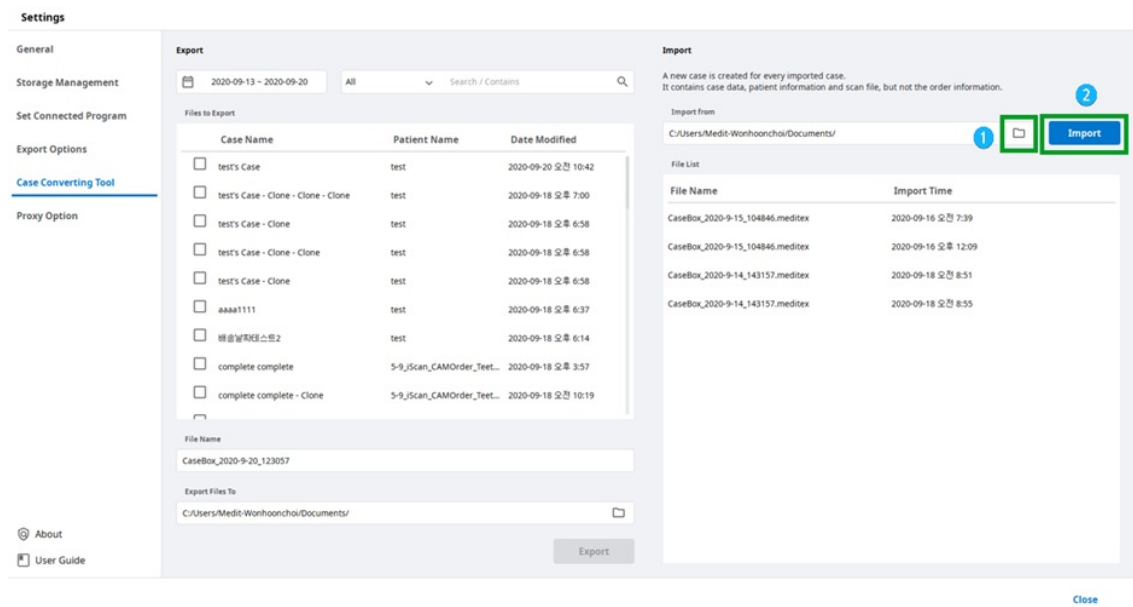

5. ستظهر الحالة المستوردة أيضًا في Case Box (حساب العيادة) أو Work Box (حساب المختبر).


خيارات الوكيل

في الأماكن ذات الشبكة المحدودة، يمكنك تغيير إعدادات الشبكة.

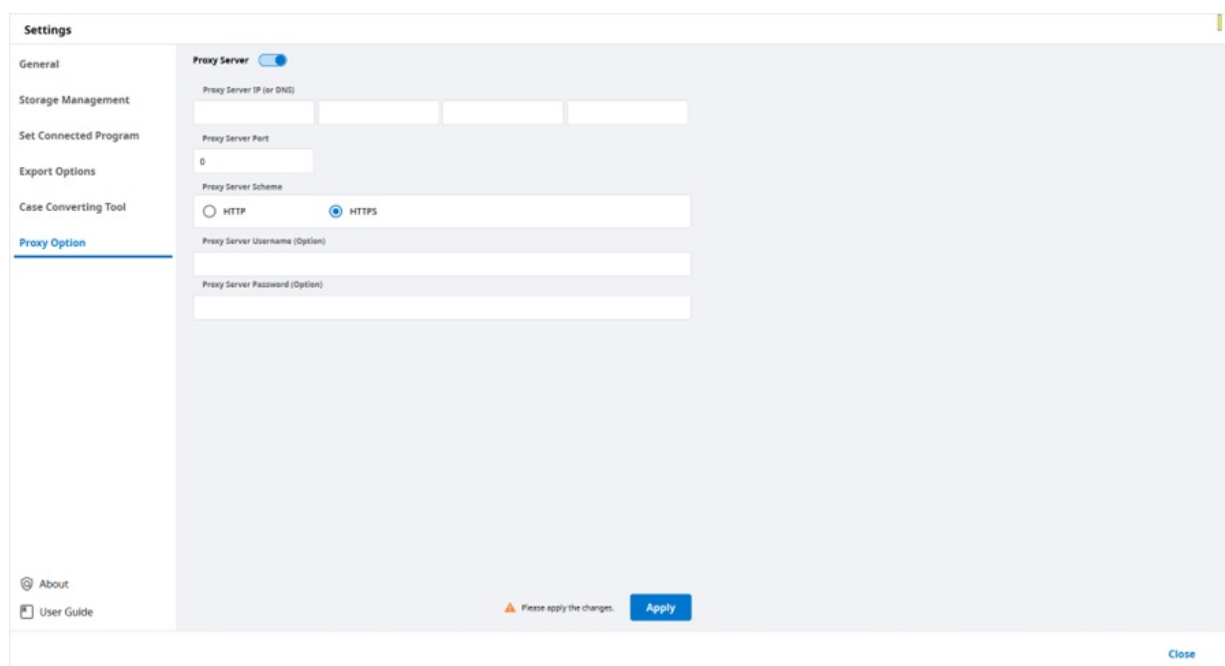

حول

إظهار معلومات مفصلة حول Medit Link.

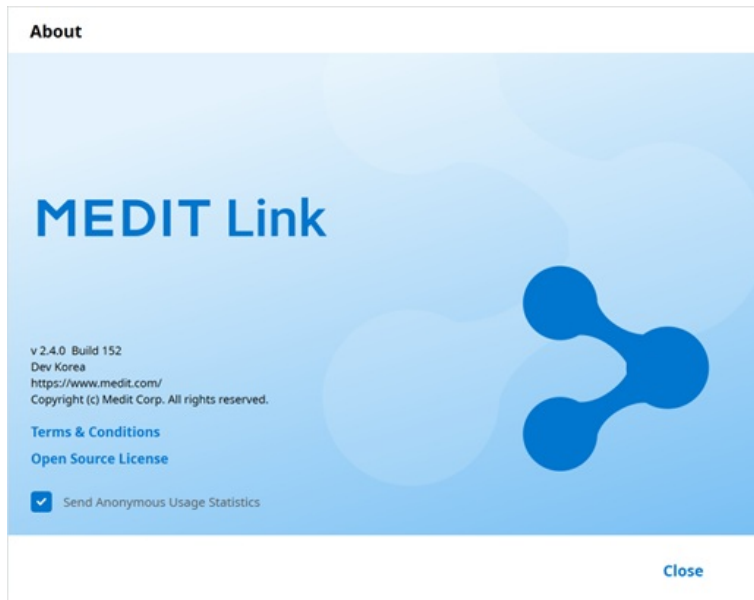

دليل المستخدم

احصل على دليل المستخدم لـ Medit Link.

يتطلب فتح دليل المستخدم اتصالاً بالإنترنت.

عارض الملفات

يقوم عارض الملفات بتجميع وعرض البيانات المختلفة، بما في ذلك البيانات المكتسبة من البرامج المرتبطة بـ Medit Link والبيانات المرفقة من قبل المستخدمين.


يوفر وظائف الإدارة الأساسية مثل إظهار/إخفاء البيانات وضبط العتامة وحذف البيانات.

يدعم معاينات الملفات بالتنسيقات التالية:

- البيانات ثلاثية الأبعاد: STL، OBJ، PLY
- الصور ثنائية الأبعاد: PNG، JPG، JPEG، BMP، GIF، TIF، TIFF
- ملفات الفيديو: MKV، MP4، AVI، WMV

شجرة البيانات

يمكنك جمع وعرض كافة البيانات الخاصة بالحالة في شجرة البيانات. يمكنك أيضًا إظهار/إخفاء البيانات وضبط الشفافية وحذف البيانات من شجرة البيانات.

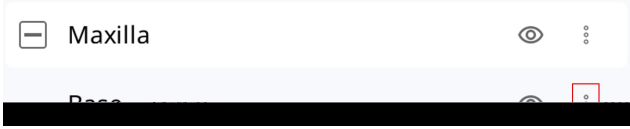يمكنك إظهار أو إخفاء البيانات.	إظهار/إخفاء 
يظهر شريط التمرير عند النقر على إحدى البيانات الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك ضبط عتامة البيانات المعروضة عن طريق تحريك شريط التمرير. 	العتامة 
يؤدي النقر على رمز المزيد إلى إظهار الميزات الإضافية المتاحة.  • إظهار هذا فقط: إخفاء جميع البيانات الأخرى ولكن عرض البيانات المقابلة فقط. • إخفاء: إخفاء البيانات. • نسخ: نسخ البيانات وإضافتها إلى مجموعة المرفقات. • تصدير: تصدير الملفات المحددة. • إعادة التسمية: تغيير اسم البيانات. • حذف: حذف البيانات.	المزيد 

ملاحظة

يمكنك إعادة تسمية البيانات عند الاتصال بالإنترنت.

أدوات التحكم في النموذج

التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	+
تدوير النموذج.	تدوير	↻

التكبير/التصغير	تكبير وتصغير النموذج.	
التكبير مع الملاءمة	ضع النموذج في وسط الشاشة.	
النسيج مفعّل	إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.	
وضع عرض النموذج	إظهار البيانات بلون واحد.	
الشبكة مفعلة	عرض الشبكة في الخلفية.	
إعدادات الشبكة (mm)	تراكب الشبكة فوق النموذج.	
التراكب مفعّل	إخفاء الشبكة.	
الشبكة غير مفعلة		

التحكم بالصور ثنائية الأبعاد


الصورة التالية/ السابقة	التنقل بين الصور.	
تعديل	تعديل الصورة.	
قرص/لصق النافذة	يمكنك فصل نافذة الصورة وضبطها على الموضع المطلوب. يمكنك تغيير حجم النافذة. عند إعادة النافذة إلى موقعها الأصلي، تعود إلى حجمها الافتراضي.	

أدوات وظيفية

التقاط الصور والمذكرة


النقط الشاشة الحالية كصورة ثنائية الأبعاد أو ارسم عليها أو أضف ملاحظات.

يمكنك حفظها كملف مع ملاحظاتك وإرسالها كمرجع.

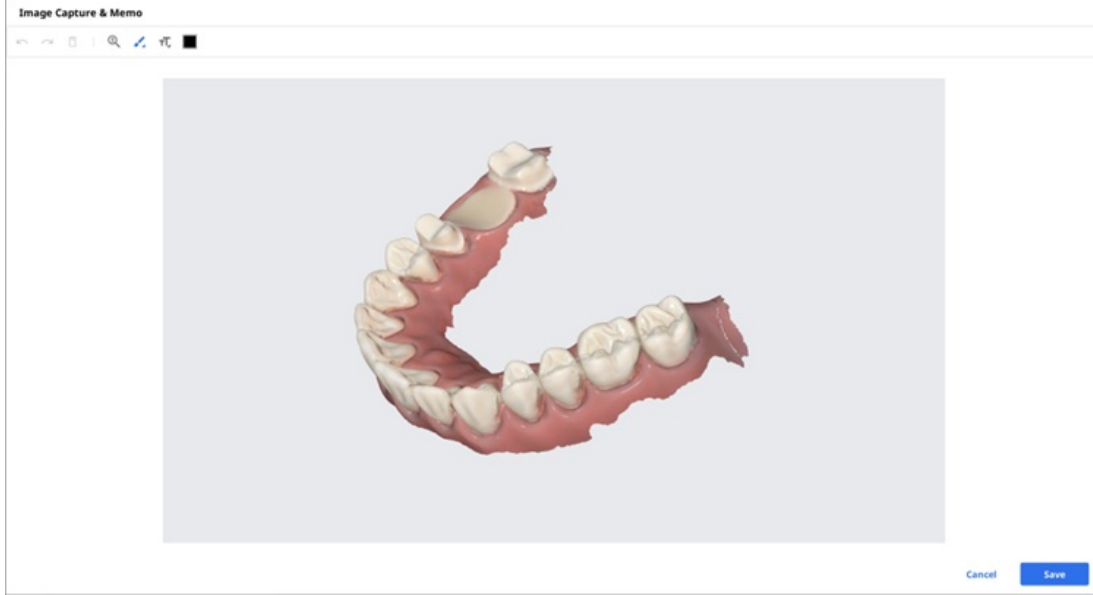


Ortho Capture

النقط الصور في اتجاه العرض الحالي وأعلى/ أدنى/يسار/يمين من اتجاه العرض الحالي.

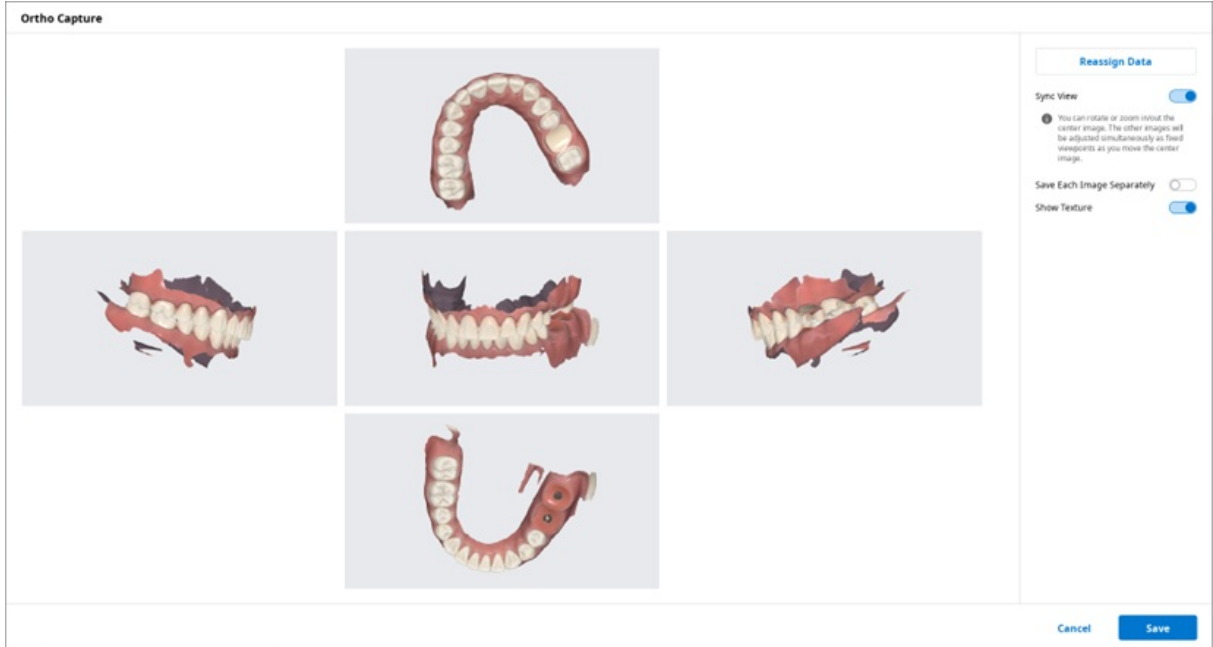

عند التشغيل، يمكنك تدوير أو تكبير/تصغير الصورة المركزية. سيتم ضبط الصور الأخرى في نفس الوقت كنقاط رؤية ثابتة أثناء تحريك الصورة المركزية.	عرض المزامنة
عند إيقاف التشغيل، يمكنك تحريك جميع الصور أو تدويرها أو تكبيرها/تصغيرها بشكل فردي.	
احفظ كل صورة بدقة عالية.	حفظ كل صورة بشكل منفصل

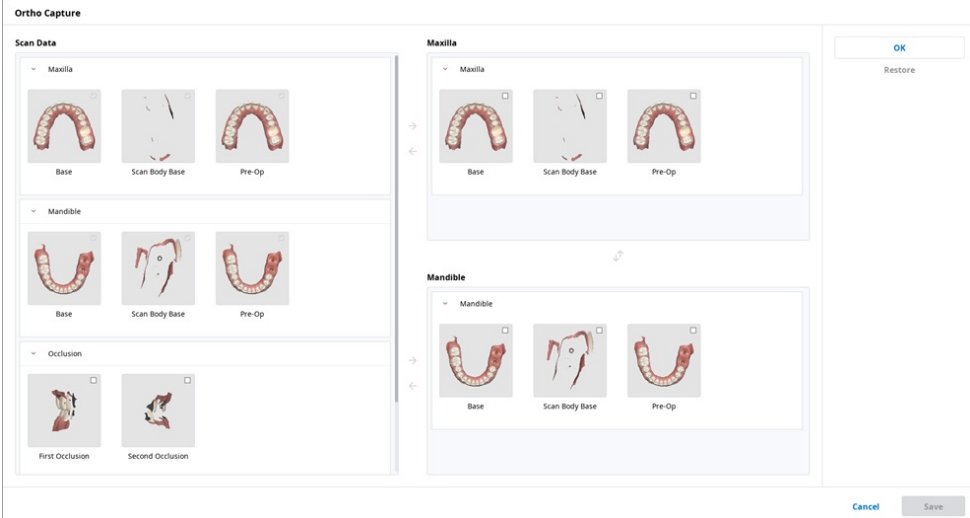قم بتفعيل/إيقاف تفعيل نسيج النموذج.	إظهار النسيج
قم بتغيير بيانات الفك العلوي/الفك السفلي باستخدام ميزة إعادة تعيين البيانات. يمكنك استخدام البيانات المغيرة لإنشاء واستخدام الصور الناتجة من Ortho Capture.  • مسح البيانات: يتم عرض بيانات المسح الضوئي للحالة. • الفك العلوي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك العلوي. • الفك السفلي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك السفلي.	إعادة تعيين المعلومات


ملء الثقوب

ملء الثقوب في بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد.



القص


يوفر القص أدوات متنوعة لتعديل البيانات.

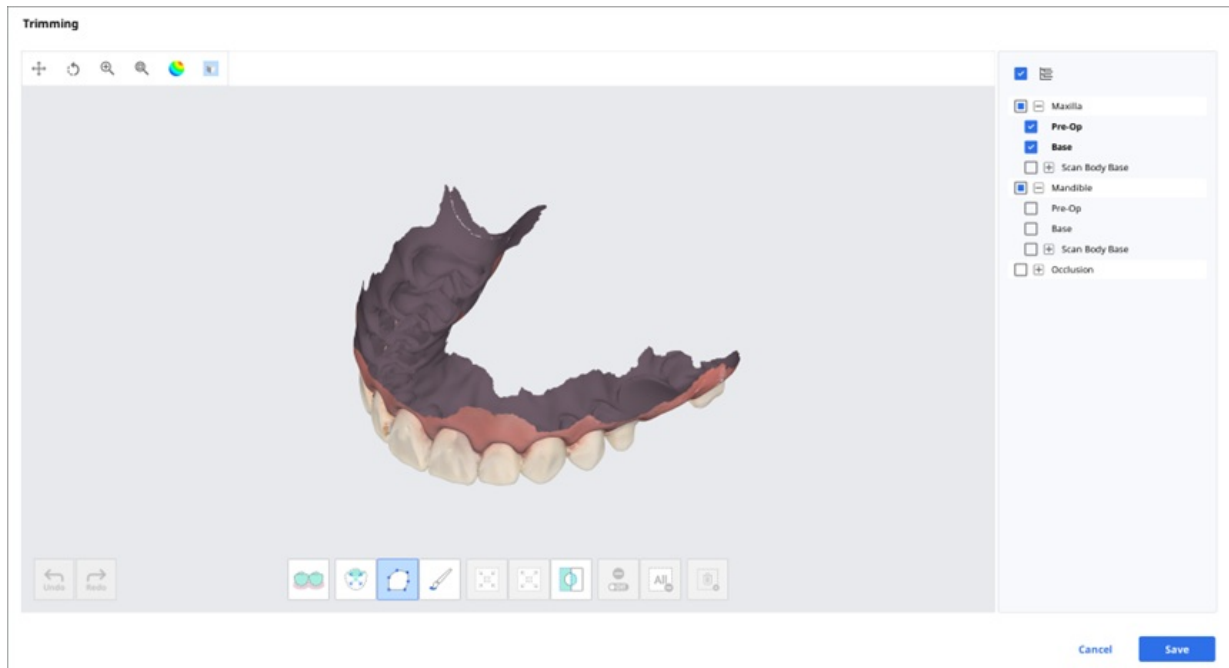

يمكن تعديل بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد المحددة باستخدام أدوات مختلفة موجودة في الجزء السفلي من النافذة.

تحديد	التحديد الذكي للأسنان		حدد تلقائيًا جميع أسنان القوس تاركًا أجزاء اللثة.
	التحديد الذكي للسن الواحد		حدد تلقائيًا منطقة السن الواحدة مع ترك أجزاء اللثة. انقر، اضغط، واسحب الفأرة على السن.
	تحديد متعدد الخطوط		حدد كل الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة.
	تحديد بالفرشاة		حدد كل الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. سيتم تحديد الوجه الأمامي فقط. تأتي الفرشاة بثلاثة أحجام مختلفة.
	تقليص المنطقة المحددة		قم بتقليص المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.
تعديل المنطقة المختارة	توسيع المنطقة المحددة		قم بتوسيع المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.
	عكس المنطقة المحددة		عكس التحديد.
	التحديد/إلغاء التحديد		عند التشغيل، قم بإلغاء تحديد المنطقة باستخدام أدوات مختلفة.
إلغاء التحديد	إلغاء كل ما تم تحديده		إلغاء كافة المناطق المحددة.
	حذف المنطقة المحددة		حذف البيانات من المنطقة المحددة.

1. حدد المنطقة التي تريد قصها باستخدام أدوات تحديد المنطقة.

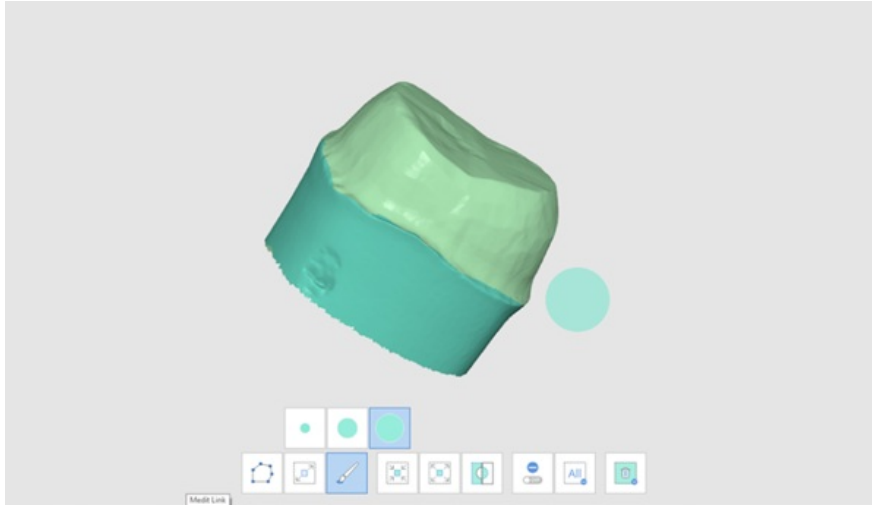


ملاحظة

2.


تحدد أداة القص المتعدد الخطوط جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة، بينما تحدد أداة القص بالفرشاة بيانات الوجه الأمامي فقط.

3. يمكنك عكس التحديد، تقليصه أو توسيعه باستخدام الأدوات الثلاثة التالية.


○ عكس المنطقة المحددة

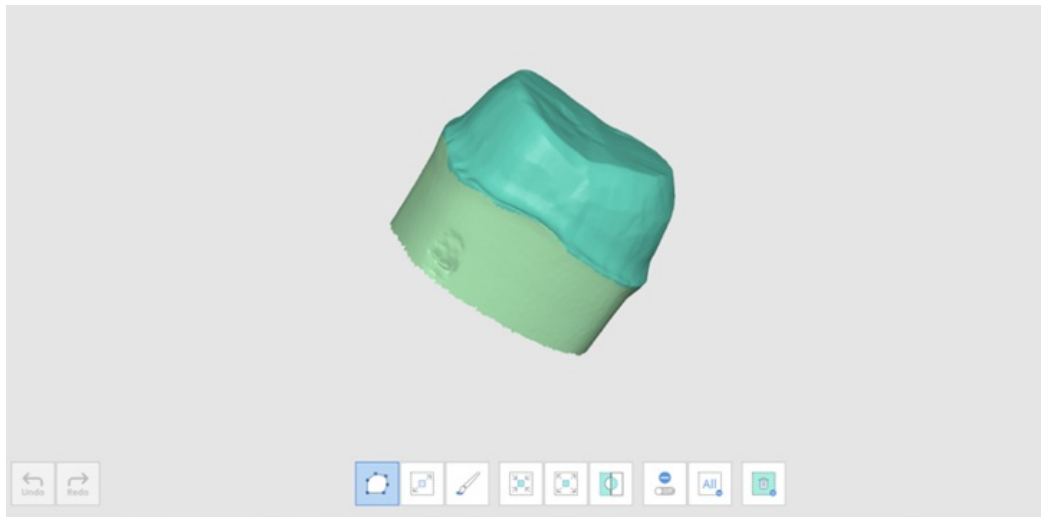

○ تقليص المنطقة المحددة

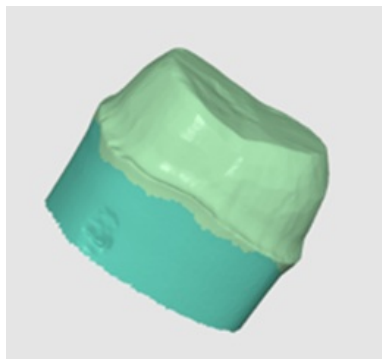


○ توسيع المنطقة المحددة

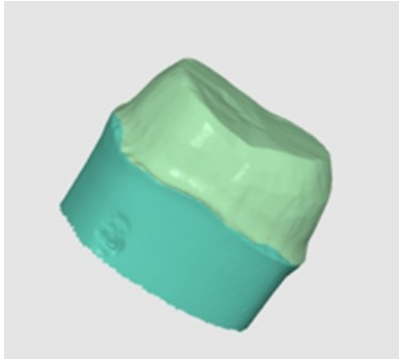


4. يمكنك إلغاء تحديد المناطق المحددة باستخدام أداة حذف المنطقة المحددة.




تحسين محاذاة الإطباق

تحسين محاذاة الإطباق. يمكنك اختيار البيانات الهدف وضبط محاذاة الإطباق.

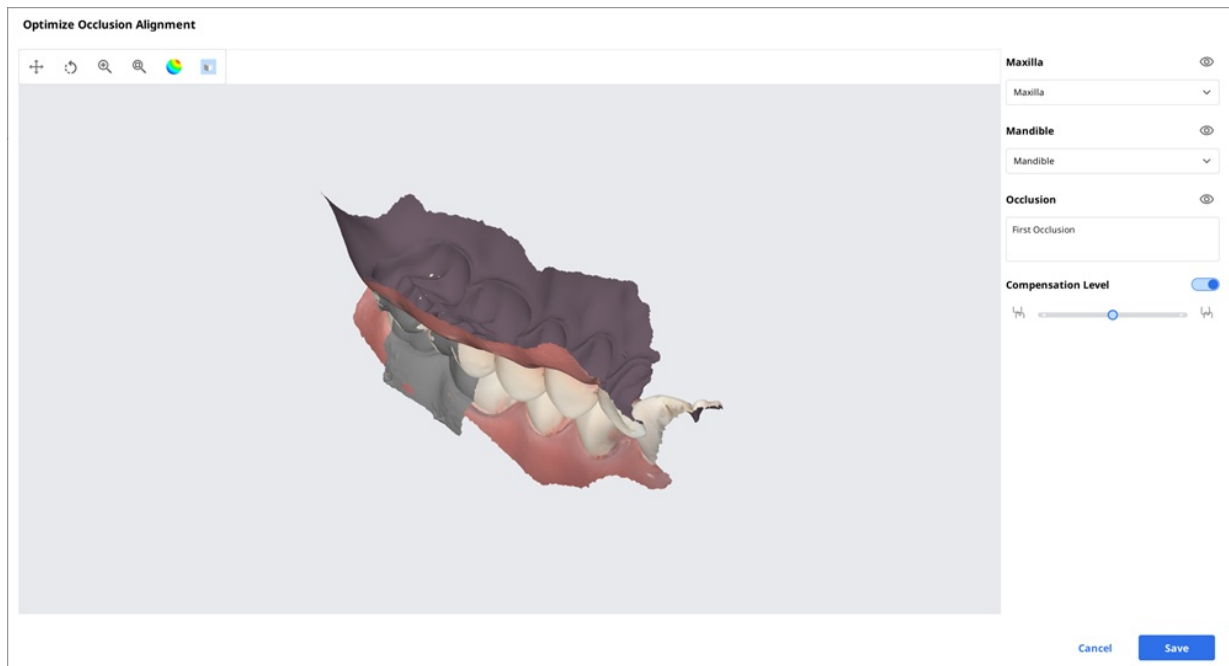

مستوى التعويض

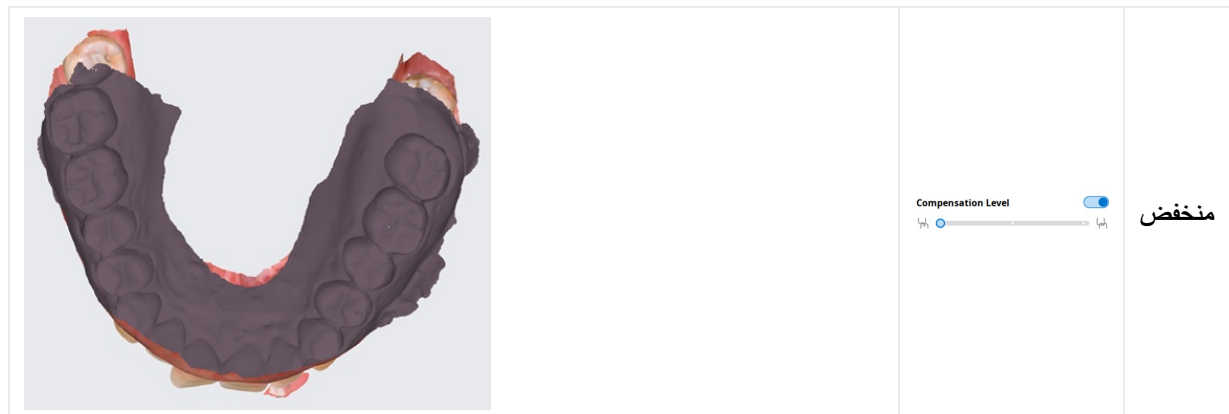

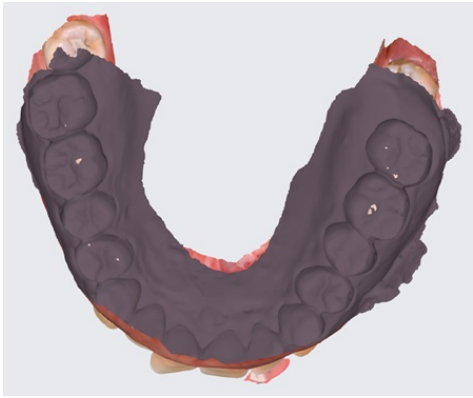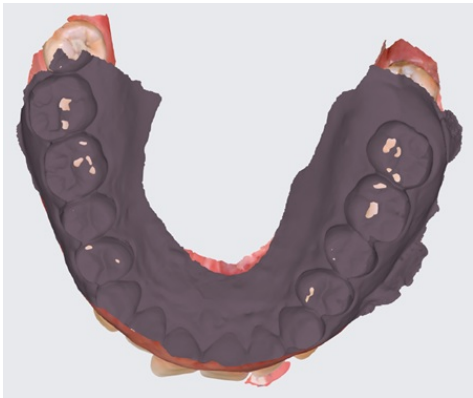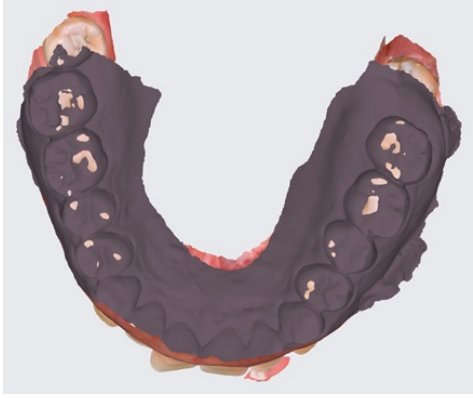		Compensation Level ☒ متوسط	متوسط
		Compensation Level ☒ عالي	عالي
		Compensation Level ☐ غير مفعّل	غير مفعّل

حركة الفك السفلي

يمكنك تشغيل حركات الفك السفلي المسجلة في Medit Scan for Clinics لرؤية تلامس الإطباق الديناميكية بين الأسنان العلوية والسفلية.



تشغيل تسجيل حركة الفك السفلي الحرة.	حركة حرة	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليسار.	الحركة الجانبية اليسرى	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليمين.	الحركة الجانبية اليمنى	
قم بتشغيل تسجيل الفك وهو يتحرك إلى الأمام.	الحركة التبارزية	

قم بإدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات

يمكنك الحصول على نتائج متعددة لبيانات الإطباق من تطبيق Medit Scan.

يوفر Medit Link وظيفة لإدارة النتائج من خلال "عارض الملفات".

كيفية إدارة نتائج متعددة

عندما يحصل المستخدم على نتائج إطباق متعددة من Medit Scan for Clinics، يوفر Medit Link خيار تحديد نتيجة.

يتم سرد قائمة النتائج بالاسم، ويمكنك تحديد عنصر واحد.

سيظهر النموذج المحدد في "شجرة البيانات" و "منطقة عرض النموذج".



Occlusal Relationship 1

Occlusal Relationship 2

Occlusal Relationship 3

Occlusal Relationship 4

Occlusal Relationship 5

يمكنك طي القائمة وتغيير العنصر باستخدام رموز الأسهم.



Occlusal Relationship 1

< >

خيارات العرض

يمكنك تغيير خيارات العرض لتخصيص تخطيطات قائمة الحالة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

فلتر الحالة

إظهار أو إخفاء كل فلتر يمثل حالة الحالة. لا يتم عرض فلتر الحالة المخفية على الشاشة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

يمكنك بسهولة العثور على الحالة التي تحتاجها باستخدام الفلاتر المعروضة.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered



Case Completed



Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box + New Case View Options

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27

- يمكنك النقر على الحالة التي تريد عرضها لعرض الحالات في تلك الحالة فقط.
- يمكنك تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

خيارات الفلترة المتاحة لكل box:

All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed	Case Box
All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed	Order Box
All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed	In Box
All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done	Work Box
غير مدعوم	Trash Box

عناصر الجدول

حدد العناصر المراد عرضها في Case Box/Work Box/In Box/Order Box. يمكنك تغيير ترتيب عناصر الجدول أو ضبط عرض عمود الجدول في عرض القائمة لتحسين بيئة المستخدم.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box + New Case View Options

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed


Total Count: 514 2018-01-01~2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
☒ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
☐ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
☐ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
☐ Scan Completed	Preop 사용한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

نوع العرض

قم بتغيير نوع العرض بين العرض في صورة معرض والعرض في صورة قائمة في Case Box.

العرض في صورة معرض

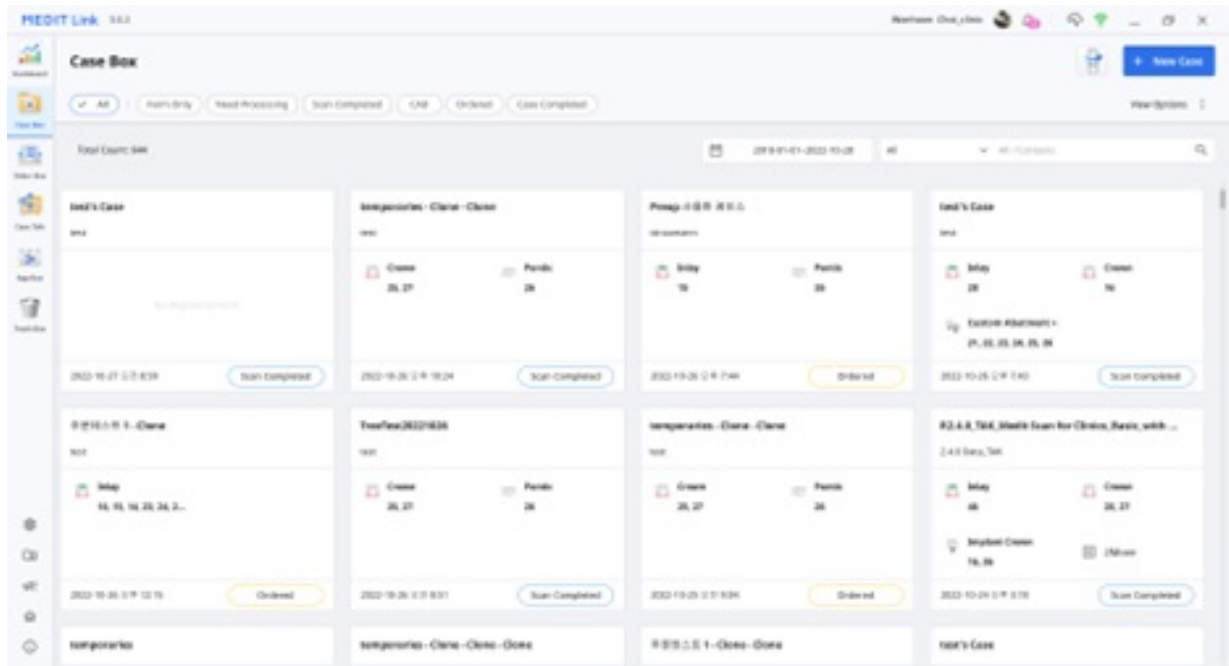

Medit Link2.3.0 Release

Medit Link 2.3.0
2020-09-24

Implant Crown Zirconia
11, 12, 13, 14,...

Inlay Zirconia
3, 4, 5, 6, 7

Crown Metal
18, 19, 20, 21,...

1

2020-09-14 오전 7:43

Scan Completed

1	اسم الحالة
2	اسم المريض وتاريخ الميلاد
3	معلومات التسجيل
4	تاريخ المسح
5	حالة الحالة

العرض في صورة قائمة

[illegible]

التجميع

حدد خيار تجميع لتصنيف الحالات في القائمة وإعادة ترتيبها حسب الخيار المحدد.

View Options

-  **Status Filters** 3 in use >
 -  **Table Items** 6 in use >
 -  **View Type** List View >

- 

Grouping

None ▾

☒

None

☐

Patient Name

☐

Order Date

☐

Scanning Date

- ☰ **Sorting** Last Modified Date >

لكل box، تتوفر خيارات التجميع التالية:

التجميع	Box
لا شيء	Case Box
اسم المريض	
تاريخ المسح الضوئي	
تاريخ الطلب	Order
لا شيء	
تاريخ المسح الضوئي	

Box	تاريخ الطلب
	تاريخ التوصيل المطلوب
	لا شيء
In Box	تاريخ الطلب
	تاريخ التوصيل المطلوب
	لا شيء
Work Box	تاريخ التوصيل المطلوب

ملاحظة

خيارات التجميع والفرز غير متاحة في Case Talk و Trash Box.

الفرز

حدد خيار الفرز لتغيير ترتيب الحالات في القائمة وفقًا للخيار المحدد.

View Options

Status Filters

3 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

Sorting

Last Modified Date ▾

Patient Name

Last Modified Date

Scanning Date

Order Date

Lab Name

لكل box، تتوفر خيارات الفرز التالية:

الفرز	التجميع	Box
اسم المريض/آخر تاريخ تحديث/تاريخ المسح الضوئي/تاريخ الطلب/اسم المختبر	لا شيء	Case Box
آخر تاريخ تحديث/تاريخ المسح/تاريخ الطلب/اسم المختبر	اسم المريض	
اسم المريض/آخر تاريخ تحديث/تاريخ الطلب/اسم المختبر	تاريخ المسح	
اسم المريض / آخر تاريخ تحديث / تاريخ المسح / اسم المختبر	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر	لا شيء	Order Box
اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر	تاريخ المسح	
اسم المريض / تاريخ المسح / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ المسح / تاريخ الطلب	تاريخ التوصيل المطلوب	

اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة	لا شيء	In Box
اسم المريض / تاريخ المسح / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ الطلب / اسم العيادة	تاريخ التوصيل المطلوب	
اسم المريض / اخر تاريخ تحديث / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة	لا شيء	Work Box
اسم المريض / اخر تاريخ تحديث / اسم العيادة	تاريخ التوصيل المطلوب	

ملاحظة

خيارات التجميع والفرز غير متاحة في Trash Box و Case Talk.

الفترة والبحث

الفترة حسب التاريخ

قم بفلتر عرض الحالات التي تم تعديلها خلال المدة المحددة.

1. انقر على فترة المدة.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد المدة من القائمة.

Last 30 Days 

From To

 2020-08-21  2020-09-20

- الكل: إظهار كل الحالات.
 - النطاق المخصص: حدد تاريخي البدء والانهاء لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة.
 - اليوم: اعرض الحالات التي تم تعديلها اليوم.
 - أمس: اعرض الحالات التي تم تعديلها أمس.
 - الأيام السبعة الماضية: اعرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال السبعة أيام السابقة باستثناء اليوم.
 - آخر 30 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 30 يومًا باستثناء اليوم.
 - هذا الشهر: عرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال هذا الشهر.
 - الشهر الماضي: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال الشهر الماضي.
- سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

إمكانات البحث المتقدم

استفد من إمكانات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تريدها.

All  Search / Contains 

تتوفر معايير البحث التالية لكل box:

الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، معلومات التسجيل، اسم المختبر	Case Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر، رقم تعريف الطلب	Order Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة،	In Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، معلومات التسجيل، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box
اسم Case Talk (يحتوي)، اسم المريض (يساوي)	Case Talk
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم المختبر، حُذف بواسطة (العيادة)	Trash Box (العيادة)
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، حُذف بواسطة (المختبر)	Trash Box (المختبر)

يمكنك تحديد معايير البحث والاختيار بين منطق يحتوي أو يساوي.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات

إنشاء حالات

إنشاء حالات في Case Box (العيادة)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. أدخل المعلومات الأساسية، مثل اسم المريض واسم الحالة.

- إذا أدخلت اسمًا غير موجود في قائمة المرضى، فسيتم إضافة مريض جديد.
- إذا قمت بإدخال اسم موجود في قائمة المرضى، يمكنك اختياره من القائمة.
- في حالة تسجيل حالة لمريض موجود، انقر على رمز قائمة المرضى لاختيار مريض موجود.



- في مربع حوار قائمة المرضى، يمكنك تسجيل مريض جديد أو تعديل معلومات مريض موجود.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Health Link.

AB

Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhuan Chu				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	0000				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close

Select

3. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. انقر على "تسجيل & مسح" لإكمال تسجيل الحالة ومتابعة المسح.

- تسجيل: سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. هذا مفيد عند تسجيل حالات متعددة.
- تسجيل & مسح: انتقل إلى تبويب النموذج لتسجيل معلومات النموذج للحالة.

إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. أدخل أو اختر اسم العيادة.

3. أدخل اسم المريض واسم الحالة. سيتم ملء اسم الحالة تلقائياً، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار تاريخ انتهاء العمل.

5. بعد تسجيل الحالة، ستم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

تعديل الحالات

تعديل الحالات في Case Box (العيادة)

1. انقر فوق رمز "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

⋮

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

ⓘ

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. انقر على "بحث" لتغيير اسم المريض. لاحظ أنه لا يمكن تعديله مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على اسم المريض

92

الذي ترغب في استبدال الاسم الحالي به ويمكنك تعديل معلومات المريض من القائمة.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. تحقق من اسم المريض الذي تريد استبدال الاسم الحالي به.
4. لإنشاء مريض جديد، اضغط على "مريض جديد".
5. استخدم زر "تعديل" لتغيير المعلومات المسجلة عن المريض.
6. انقر على "تطبيق" لإنهاء العملية.

تعديل الحالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. انقر على "تطبيق" بعد الانتهاء من التعديل.

ملاحظة

لا يمكنك تعديل معلومات الحالات التي تم استلامها من خلال الطلب في In Box.

استنساخ الحالات

استنساخ حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. سوف تُسأل عن نوع المعلومات التي ترغب في استنساخها في الحالة الجديدة.

Information

 Select a clone type.

3. اختر ما إذا كنت تريد نسخ معلومات النموذج فقط أو كل البيانات.

4. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

استنساخ حالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. قم بتكرار جميع البيانات لإنشاء حالة جديدة.

3. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

حذف حالة

حذف حالة (العيادة والمختبر)

1. انقر على رمز "حذف".



2. انقر على "OK" لحذف الحالة.

Warning

 Do you want to delete the case?

3. يتم نقل الحالات المحذوفة إلى Trash Box ويمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

معلومات التسجيل

يمكنك إدخال معلومات النموذج بناءً على البرنامج المتصل ونوع العلاج. سيتم استخدام المعلومات التي تدخلها كمعلومات أساسية للعمل على المسح الضوئي أو برامج CAD والطلب.

تسجيل معلومات التسجيل في Case Box

الإدخال في علامة تبويب النموذج

1. حدد ما إذا كنت ستدخل معلومات العلاج استناداً على الأسنان أو القوس.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
3. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

الإدخال في علامة تبويب CAD

1. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
2. حدد رقم السن / القوس / القالب.
3. حدد الإعدادات للخيارات التفصيلية وعمليات CAD.
4. انقر على "OK" لحفظ الإعدادات.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
5. انقر على "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

تسجيل معلومات التسجيل في Work Box

الإدخال في علامة تبويب النموذج

1. حدد برنامج المسح الذي تريد استخدامه.
2. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
3. قد تختلف الطرق وفقاً لبرنامج المسح المحدد.

Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	
☐	☐	أسنان
☐	☐	القوس
☐	☒	Multi-Die مرن
☐	☒	Multi-Die

4. حدد أرقام الأسنان، القوس أو القالب لعملية المسح.
5. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في القائمة.
6. انقر على "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.


الإدخال في علامة تبويب CAD

1. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.

2. حدد رقم السن / القوس / القالب.
3. حدد الإعدادات للخيارات التفصيلية وعمليات CAD.
4. انقر على "OK" لحفظ الإعدادات.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائيًا في القائمة.
5. انقر على "حفظ".

توصيل الأسنان بجسر

يمكنك توصيل عدة أسنان بجسر عند تطبيق نفس المادة على عدة أسنان متجاورة. انقر على رمز الجسر بجانب الأسنان المحددة لتوصيلها أو فصلها.

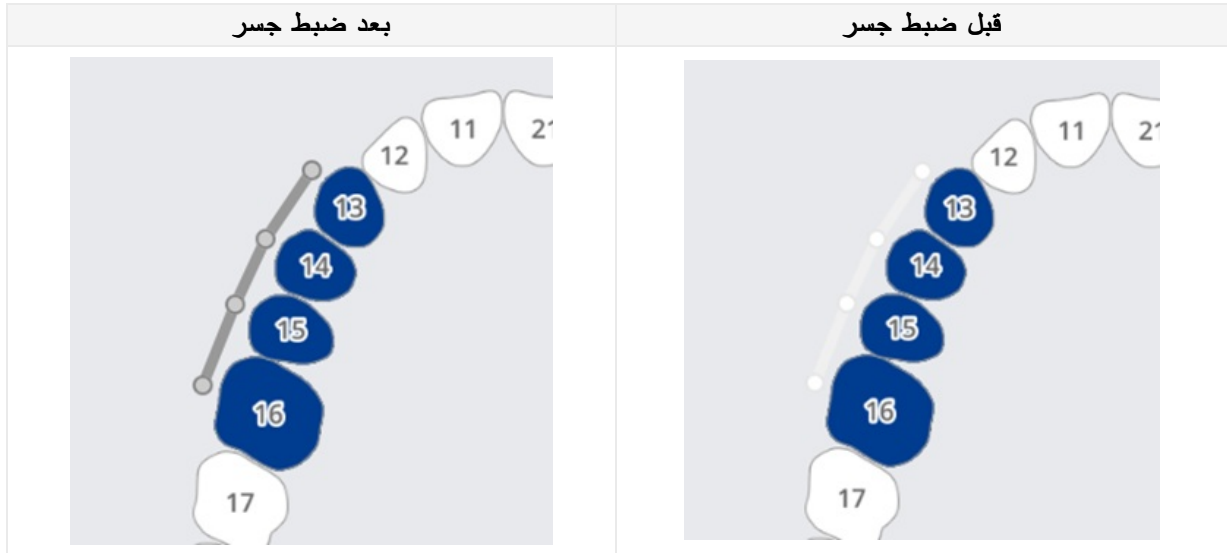

ضبط خيارات المسح

اعتمادًا على البرنامج الذي تعمل به، يتم توفير خيارات مسح مختلفة. يتم تمرير خيارات المسح المحددة لكل برنامج مسح ضوئي.

Medit Scan for Labs

خيارات عامة

قم بتمريك الأسنان المحضرة والمجاورة وقم بتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	الأسنان المجاورة	
قم بتعليم المقابل تلقائيًا وتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	المقابل	
قم بعرض خيارات تحديد المفصلة في برنامج المسح.	المفصلة	
اسمح باستخدام استراتيجية المسح "حركة الفك" في برنامج المسح.	دليل الحركة	

خيارات بالأسنان

اسمح بتعيين استراتيجية لمسح دلائل الزرعات في برنامج المسح.	دليل الزرعة	
اسمح بتعيين إستراتيجية لمسح نموذج ما قبل العملية في برنامج المسح.	مسح ما قبل العملية	

	مسح النموذج الشمعي	اسمح بوضع استراتيجية لمسح النماذج الشمعية في برنامج المسح.
---	---------------------------	---

الإضافة إلى المفضلات

يمكنك تحديد منتج سريعًا عن طريق تسجيله كمنتج مفضل.
تتم إدارة قائمة المفضلات المسجلة كقالب ويمكن مشاركتها من خلال ميزات التصدير والاستيراد.

الإضافة إلى المفضلات

1. حدد رقم السن.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - يمكن تسجيل النوع - الطريقة - المادة - اللون كمفضلة حتى إذا لم يتم تحديد جميعها.
3. انقر على رمز "النجمة".
☆
4. توجد مجموعة من المعلومات المحددة، باستثناء رقم السن، في قائمة البحث عن المفضلات.

إدارة القوالب المفضلة

يمكنك تسجيل أنواع مختلفة من القوالب وإدارتها ومشاركتها.

أضف	أضف قالبًا جديدًا.
إعادة تسمية	أعد تسمية القالب الحالي.
حذف	احذف القالب الحالي.
تصدير	تصدير القالب الحالي إلى ملف.
إستيراد	إستيراد ملف قالب.

العمل على المسح/CAD

عملية المسح

بناءً على المعلومات التي تم إدخالها، يمكنك متابعة المسح.

1. أدخل/احفظ معلومات العلاج وحدد خيارات المسح اللازمة.
2. انقر على "مسح" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.

عملية CAD

تم دمج Medit Link مع exocad.

CAD	تسجيل معلومات العلاج	تأكيد معلومات العلاج	تنفيذ CAD مباشر	استيراد نتائج CAD إلى Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. في الإعدادات > تحديد البرنامج المُتَّصِل، يمكنك ربط برنامج CAD الذي تختاره من القائمة.
2. أدخل/احفظ معلومات المهمة وخيارات التصميم في علامة تبويب CAD.
3. انقر على "CAD" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.
4. يتم تشغيل برنامج CAD المرتبط، ويتم إرسال البيانات تلقائيًا.
5. احفظ النتائج بعد أداء CAD.

ملاحظة

لا يدعم Medit Link على Mac وظيفة الارتباط بـ CAD.

الحصول على ملفات النتائج

تصدير ملفات نتائج المسح

بالإضافة إلى مشاركة النتائج مع الشركاء من خلال الطلبات، يسمح لك Medit Link بتخزين نتائجك بتنسيق الملف المطلوب باستخدام وظيفة التصدير.


تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.
إسم المجلد	يقوم النظام بإنشاء مجلد جديد وتخزين جميع النتائج فيه. يتم تعيين اسم المجلد الافتراضي بواسطة قاعدة التسمية. ولكن يمكنك تغيير اسم المجلد مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية في الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم المجلد
اسم الملف	قم بتعيين اسم الملف للنتيجة. تحدد قاعدة التسمية اسم الملف الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير اسم الملف مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية من خلال الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم الملف
نوع CAD	حدد برنامج CAD المراد استخدامه لبرنامج التصميم الخاص بك. سيقوم Medit Link بضبط الملفات بناءً على هذا التحديد، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة.
صيغة الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
ضغط الملفات	اضغط جميع النتائج في ملف واحد.
جمع الشبكات الفردية	اجمع بين نتيجة الفك العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان الفردية. مفيد عندما يكون استيراد عدة ملفات إلى برنامج غير ممكن.
تصدير كافة العلاقات الإطباقية	عندما يتم إنشاء نتائج إطباق متعددة من خلال تطبيق المسح، يمكنك تصدير جميع نتائج الإطباق بمرة واحدة.
حفظ معلومات الحالة كملف PDF	حفظ معلومات الحالة بصيغة pdf مع النتيجة.

تصدير الملفات المحددة


يوفر Medit Link وظيفة تصدير في القائمة الموسعة في عارض الملفات. تسمح لك هذه الوظيفة بتصدير الملفات المحددة بسهولة.

1. انقر على رمز "القائمة" بجوار مجموعة البيانات أو إحدى كيانات شجرة البيانات في عارض الملفات.

2. ثم انقر على "تصدير".

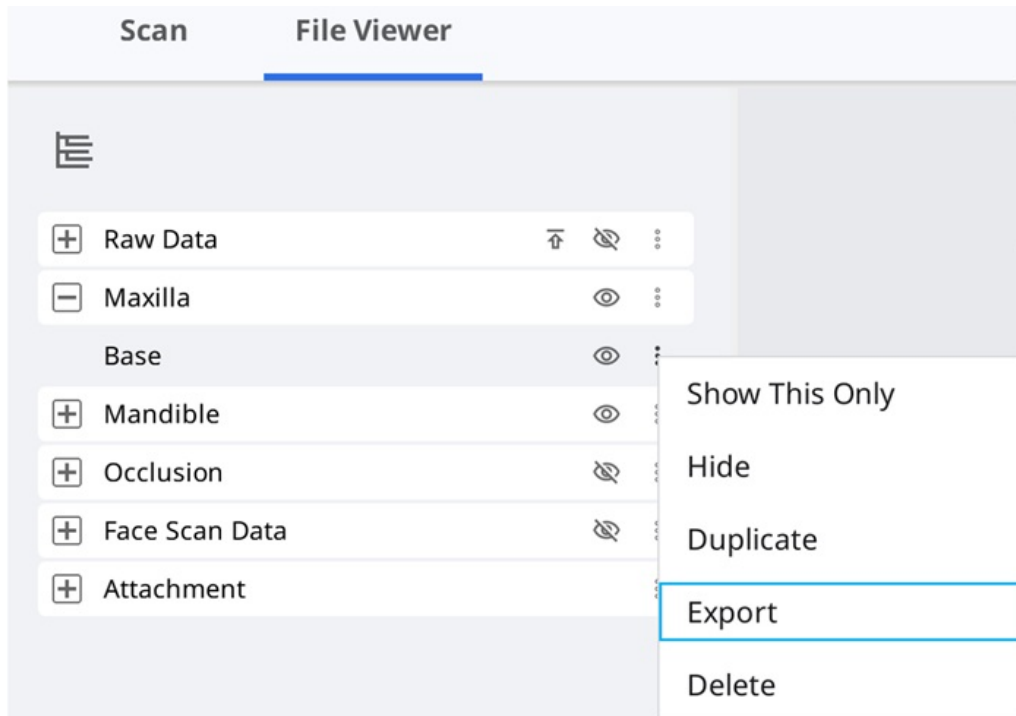

3. يعرض مربع حوار التصدير الملفات المحددة التي تريد تصديرها فقط.

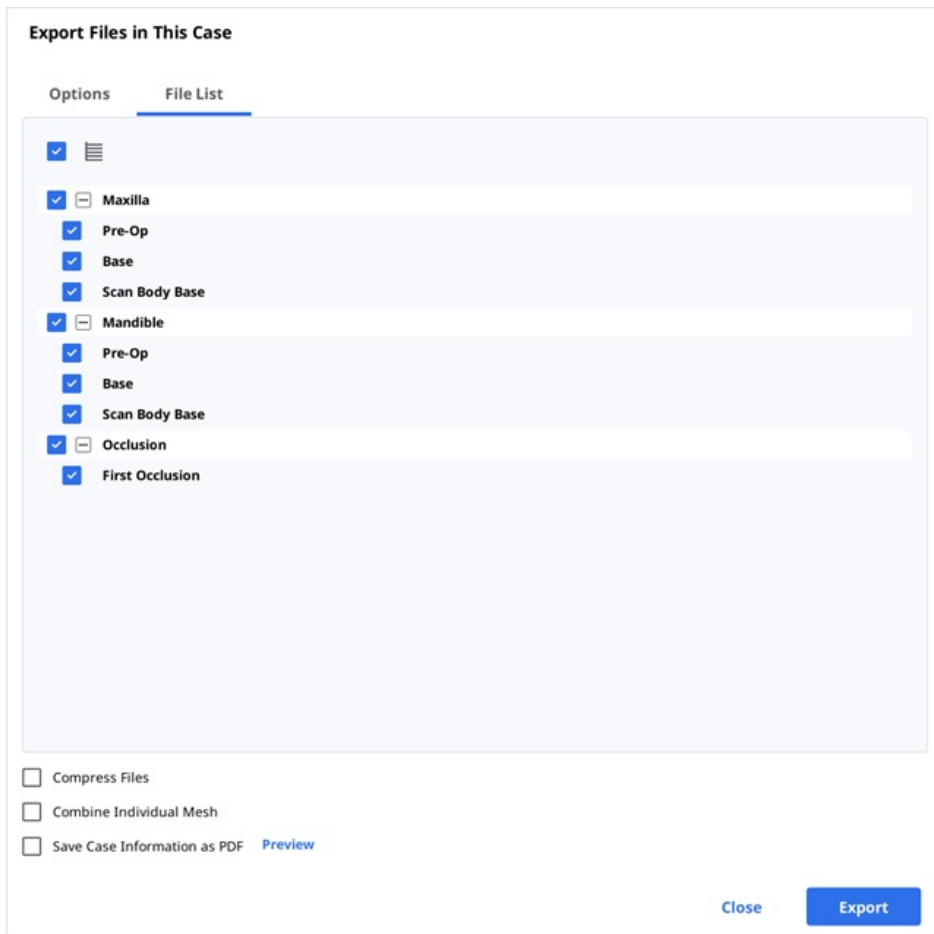

4. أخيرًا ، انقر على "تصدير".

تصدير خط الإنهاء

يوفر Medit Scan for Clinics وظيفة لإنشاء خط الإنهاء، ويمكن لـ Medit Link نقل خط الإنهاء إلى برنامج CAD.

تصدير خط الإنهاء كلون

بشكل عام، يحول Medit Link خط الإنهاء إلى لون ويصدر النتيجة مع الفك العلوي أو الفك السفلي معًا. يمكنك إنشاء خط الإنهاء في CAD بالإشارة إلى معلومات اللون.

مثال:



ملاحظة

هذه الميزة متاحة للتنسيقات التي تتضمن معلومات الألوان مثل meditMesh و OBJ و PLY. لا يتم تحويل خط الإنهاء إلى STL.

ملاحظة

نوع CAD > 3shape لا يدعم هذه الميزة.


تصدير خط الإنهاء كملف

في حالة Exocad، يقوم Medit Link بتصدير خط الإنهاء إلى "margin.xyz" والذي يمكن استيراده إلى exocad مباشرة.


يمكنك استخدام هذا الملف في exocad دون عمل إضافي.

مثال:

خط الإنهاء	الفك العلوي
------------	-------------

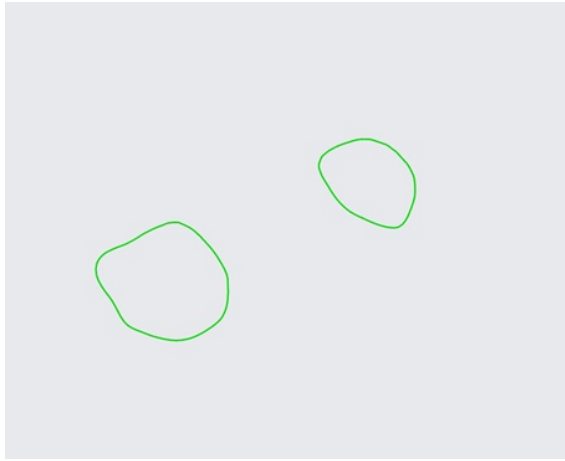

خطوط الإتهام مصدرة كمسافات فردية

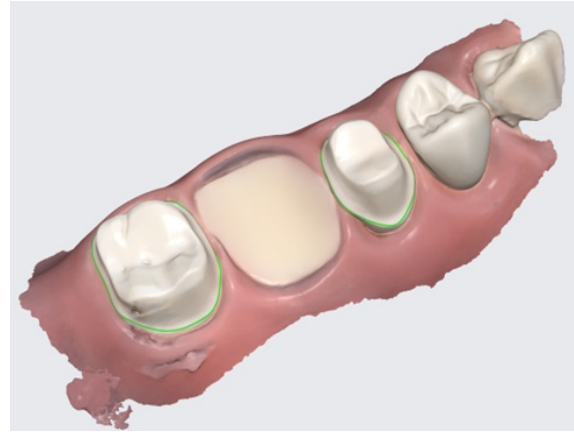

النتيجة بخطوط الإتهام كمعلومات أولية

تصدير قائمة الحالات كملف CSV

يوفر Medit Link وظيفة لتصدير قائمة الحالات بتنسيق CSV.

يمكنك تصدير قائمة الحالات بالمعلومات الأساسية وإدارة الحالات بسهولة.

وظيفة "التصدير كملف CSV" متاحة في القائمة التالية لتطبيق Medit Link.

- In Box •
- Work Box •

كيفية تصدير قائمة الحالات

1. انتقل إلى In Box أو Work Box.
2. حدد الحالات التي تريد تصديرها.

MEDIT Link 3.0.0

Wonhoon Choi

In Box

✓ All | Pending | Accepted | Case Completed

Cancel Selection | Delete | Export to CSV | Items Selected: 5

2018-01-01-2022-09-29 | All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐ Pending	test's Case	test	2022-09-29 08:13	2022-10-01 10:30	Wonhoonchoi-Clinic	10413603	
☐ Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 07:03	2022-09-24 10:30	Wonhoonchoi-Clinic	10374886	
☐ Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 07:01	2022-09-24 10:30	Wonhoonchoi-Clinic	10374864	
☐ Accepted	test's Case	test	2022-09-13 02:43	2022-09-15 10:30	Wonhoonchoi-Clinic	10314293	
☒ Pending	test's Case	test	2022-09-05 07:31	2022-09-07 10:30	Wonhoonchoi-Clinic	10268220	
☐ Case Completed	Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 08:51	2021-07-08 08:50	Wonhoonchoi-Clinic	8579990	500 KRW
☒ Case Completed	test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 04:10	2021-09-07 04:10	Wonhoonchoi-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒ Case Completed	test's Case memo	test	2022-04-08 11:00	2022-04-15 07:45	Wonhoonchoi-Clinic	9569817	

3. انقر على زر "القائمة الموسعة" في الجزء العلوي لتحديد خيار "التصدير كملف CSV".



4. حدد المسار واسم الملف ثم احفظ النتائج.

تنزيل ملفات من موقع Medit Link

يوفر Medit Link وظيفة تنزيل.

إذا كنت ترغب في الحصول على ملفات النتائج دون تثبيت تطبيق Medit Link، يمكنك تنزيل الملفات من خدمة موقع Medit Link.

ملاحظة


يجب تحميل البيانات على سحابة Medit لتنزيل الملفات من الموقع.

تتوفر وظيفة التنزيل في القائمة التالية على موقع Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

يمكنك العثور على زر "تنزيل" في الجزء العلوي الأيمن.

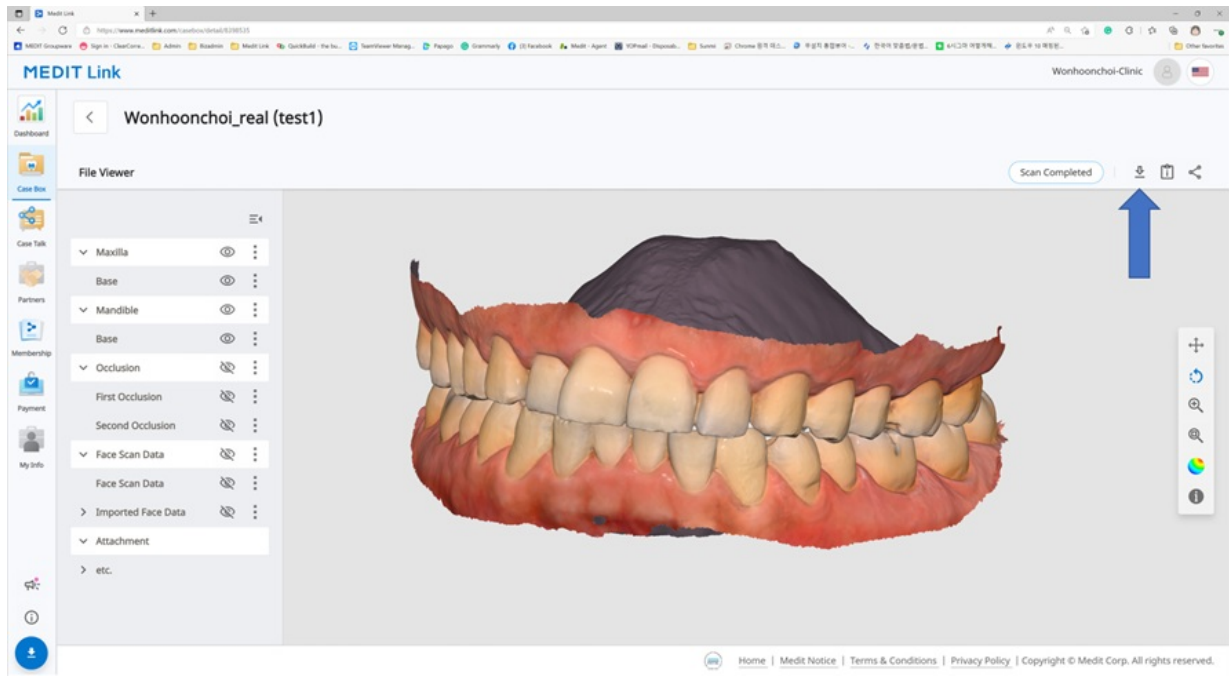

Web Viewer

عند مشاركة الحالة باستخدام Case Talk، يمكنك تعيين ما إذا كنت ستسمح بالتنزيل أم لا.

إذا قمت بتحديد "منح إذن التنزيل" وشاركت الحالة، سيتمكن جميع المستخدمين الذين يتصلون بالرابط المشترك من تنزيل الملفات.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.

Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close [Get Link](#)

في الWeb Viewer، يمكنك العثور على رمز "تنزيل" في الجزء العلوي الأيسر.

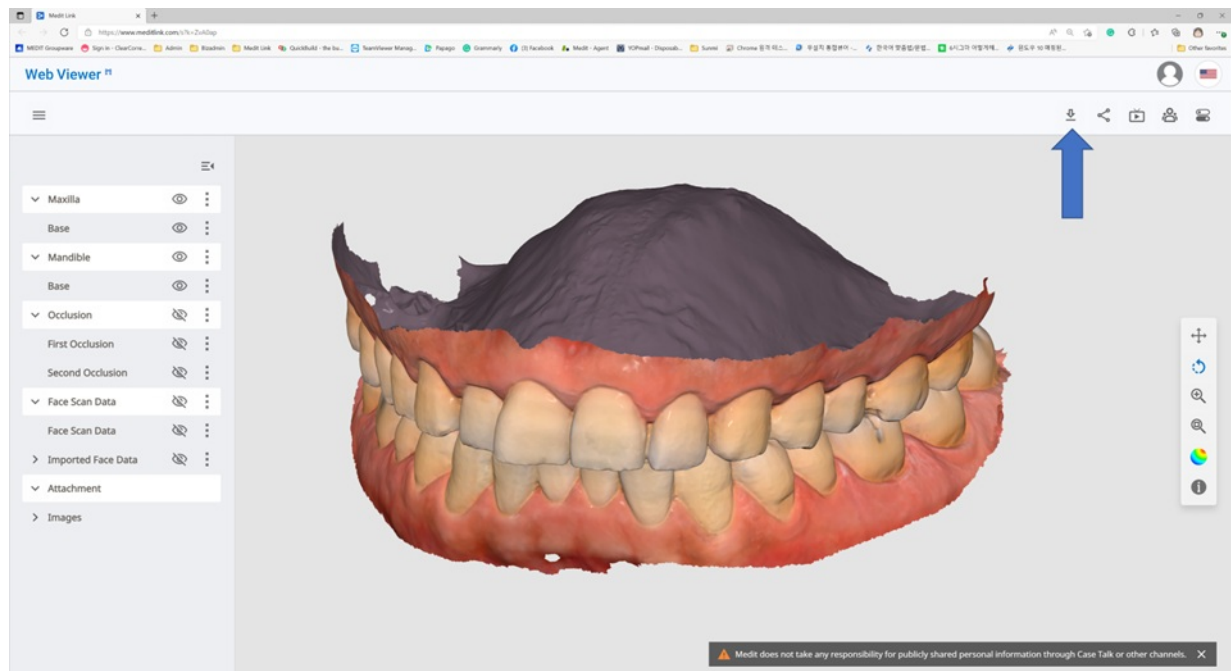

كيفية التنزيل

1. انقر على "تنزيل".



2. حدد تنسيق الشبكة من مربع حوار التنزيل.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. ثم انقر على "OK".

طلب/إدارة الطلبات

يمكنك بسهولة طلب حالة تحتوي على بيانات تم الحصول عليها من البرامج المتصلة والبيانات المرفقة من قبل المستخدم.

طلب حالات

يمكنك تقديم طلب لشركائك في Case Box.

1. انقر على الزر "طلب".
2. تحقق من المعلومات المطلوبة لطلبك.

Order

General

Order List

File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. اختر شريك.
4. تحقق من معلومات المنتج من علامة تبويب قائمة الطلبات.
 - يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد مشاركة اسم المريض.
5. تحقق من الملفات للطلب من علامة تبويب قائمة الملفات.
6. أدخل تاريخ التسليم المطلوب.
 - يتم تعيين القيمة الافتراضية على 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
7. يمكنك إضافة مذكرة وعلامات لشريكك لتوضيح تفاصيل محددة.
8. عندما يتم إنشاء العديد من نتائج الإطباق على تطبيق المسح، يمكنك إرسال جميع نتائج الإطباق مرة واحدة عن طريق تحديد "ترتيب كافة العلاقات الإطباقية".
9. تابع طلبك.
 - تخطي الدفع: تابع الطلب دون استخدام نظام الدفع المقدم على Medit Link. متاح عند الطلب من شريك بحالة "متعاقد".
 - الدفع: استخدم نظام الدفع المقدم على Medit Link لمتابعة الطلب. متاح عند الطلب من شريك متعاقد.
 - OK: نواصل الطلب دون أي شروط بخصوص سعر المنتج. متاح عند الطلب من شريك بحالة "شراكة".

ملاحظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- تخطي الدفع
- الدفع

تأكيد الطلب (In Box)

- اقبل الطلب عند استلامه.
- ستم إعادة توجيه الطلبات المقبولة إلى Work Box.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

إلغاء الطلب (Order Box)

- يمكنك إلغاء الطلب قبل أن يقبله شريكك.
- يمكن إعادة طلب الحالات الملغاة.

test's Case (test)

Order File Viewer

Cancel

Pending

رفض طلب (In Box)

- يمكنك رفض طلب مستلم.
- يمكن إعادة طلب الحالات المرفوضة.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

التحقق من الحالات المطلوبة

يمكنك التحقق من تفاصيل الحالة التي طلبتها من Order Box في حساب العيادة. يمكنك أيضًا التحقق من الحالة التي تلقيتها من In Box في حساب المختبر.

MEDIT Link 3.1.0

test's Case / wonhoonchoi Beta

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

Order ID: 5718975

Patient Name: test Partner Name: wonhoonchoi Beta

Scan Date: 2020-11-10 06:18 Order Date: 2020-11-24

Requested Delivery Date: 2020-11-24 Expected Delivery Date: 2020-11-24

Memo

Tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

معلومات الطلب	المعلومات التي يمكن تضمينها في الطلب هي كما يلي: رقم تعريف الطلب / اسم المريض / اسم الحساب / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم / تاريخ استحقاق التسليم / المذكرة. يمكنك التحقق من تفاصيل المنتج المطلوب و معلومات التوصيل.
قائمة الطلب	تعرض قائمة الطلب تفاصيل المنتج المطلوب.
الشحن	أدخل/تحقق من معلومات الشحن.

إدخال معلومات الشحن (In Box)

أدخل معلومات الشحن للحالة المكتملة وابدأ الشحن.

1. انقر على علامة تبويب الشحن.
2. أدخل معلومات الشحن وانقر على "تسجيل".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. يتم إرسال المعلومات المدخلة إلى شريكك.

إدارة تاريخ التسليم

يمكنك تعيين تاريخ التسليم المتوقع عند تقديم طلب، وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى شريكك.

تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)

- عند الطلب من Case Box، يمكنك إدخال تاريخ التسليم المطلوب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- المدة الافتراضية هي 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
- أدخل التاريخ/الوقت الذي ترغب استلام المنتجات فيه وتابع الطلب.
- يمكنك ضبط الوقت بسهولة باستخدام شريط التمرير.

تحديد موعد التسليم المتوقع (حساب العيادة)

- يمكنك إدخال تاريخ التسليم المتوقع للحالة المطلوبة من In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 9:56

Order Date
2022-09-29 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 10:30

Memo
«Scanbody Library»
16: DDENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: DDENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: DDENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

1. تحقق من تاريخ التسليم المطلوب مع الشريك وأعد الجدولة باستخدام الزر "تعديل".



2. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار يوم العمل الفعلي. إذا لزم الأمر، يمكنك ترك تعليق أيضًا.

3. انقر على "تطبيق".

4. سيتم إعادة توجيه تاريخ التسليم المتوقع والمذكورة مع الطلب.
- يمكنك التحقق من التاريخ والمذكرات في Order Box.
 - يمكنك تغيير تاريخ التسليم المتوقع، وستتم إعادة توجيه التغييرات إلى شريكك.
5. يمكنك التحقق من سجل الحالة باستخدام زر "سجل".



اكمال الحالات

الإكمال (Work Box/In Box)


بمجرد الانتهاء من جميع المهام، اضغط على "تم" لإكمال الطلب.

أكمل حالة من تفاصيل الحالة

يمكنك العثور على زر "القائمة" على اليمين من زر الفتح.



أكمل العمل بالنقر على أيقونة "القائمة" واختيار "Done".

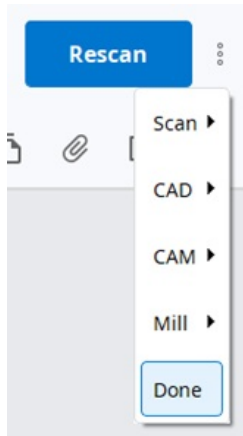

أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات

عند اختيار الحالات من Work Box، يتم توفير زر القائمة الموسعة أعلى القائمة.



أكمل الحالات المتعددة على النحو التالي:

1. اذهب إلى Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد إكمالها.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Requested Delivery Date	Scan Date	Clinic Name
Form Only	test's Case	test	23-Inlay / 24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-07-18 ٥:40	2022-04-18 ١٢:٠٠		test
Done	test's Case	test	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-L...	2022-03-29 ١٢:٠٩	2022-04-05 ١٢:٠٠		test
Done	test's Case	test	-	2022-03-28 ٦:٢٥	2022-04-04 ١٢:٠٠		test
Scan Completed	BS17's Case	BS17	11-Coping / 44-Crown / 45-Pontic / 46-Crown	2022-02-28 ٢:٥٧	2020-12-30 ١٢:٠٠		BS17
Form Only	test's Case	test	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2021-11-18 ٥:١٦	2021-11-25 ١٢:٠٠		test
Scan Completed	BS17's Case	BS17	11-Coping / 44-Crown / 45-Pontic / 46-Crown	2021-09-17 ٣:٥٢	2020-12-30 ١٢:٠٠		BS17
Scan Completed	BS17_Dummy's Case	BS17_Dummy	44-Wax-Up / 45-Wax-Up / 46-Wax-Up	2021-09-17 ٣:٥٢	2020-12-30 ١٢:٠٠		BS17_Dummy
Done	test's Case	test	11-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-L...	2020-10-27 ٦:١١	2020-11-03 ٦:١٠		wonhoonchoi Beta

3. انقر على زر "القائمة الموسعة" المذكورة أعلاه.



4. حدد "Done" من القائمة

الإكمال (Case Box/Order Box)

بعد إكمال الحالة في المختبر، تحتاج العيادة إلى تأكيد الحالة لإكمال عملية الطلب.

إذا أكمل المختبر عمله، يمكن للعيادة العثور على وظيفة "تأكيد التسليم" في Order Box.

انقر على هذا، تكتمل عملية الطلب، وسيتم تغيير حالة الحالة إلى "Case Completed".

test's Case - clone (test)

Order File Viewer

Confirm Delivery

Shipped

أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box

بالنسبة للحالات التي لم يتم طلبها من المختبر، يمكنك إكمال هذه الحالات في Case Box.

1. اذهب إلى Case Box.
2. حدد الحالة التي تريد إكمالها.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_Clinic

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

☐ Cancel Selection

 Items Selected: 4
 2018-01-01-2022-09-29
 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오후 8:45	
☐ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오후 8:13	2022-09-29 오후 7:56
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 10:41	
☒ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오후 9:27	
☒ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오후 9:27
☐ Scan Completed	Preop 사용권 제이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

3. انقر على زر "القائمة الموسعة".



4. اختر "Case Completed"

التواصل باستخدام العلامات

يمكنك إضافة معلومات إضافية عن حالتك باستخدام العلامات وإرسالها إلى شركائك.

إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة

يمكنك إدخال علامات عند إنشاء حالة جديدة أو تعديل معلومات الحالة.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

يمكنك بسهولة البحث عن وتحديد العلامات التي استخدمتها من قبل.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

إضافة علامات عند الطلب

يمكنك التحقق من العلامات وتعديلها في مربع حوار الطلب أثناء الطلب.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR

[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname

Specialmaterial

SpecialComment

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

MEDIT Link 3.1.0

wonhoon choi

Order

Open

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

Scan Completed

Form

File Viewer

Raw Data

Maxilla

Base

Mandible

Base

Occlusion

Dynamic Occlusion

Attachment

Occlusal Relationship 1

Memo

Edit

Doctorname

Specialmaterial

SpecialComment

Tags

Edit

