

USER GUIDE

Medit Link

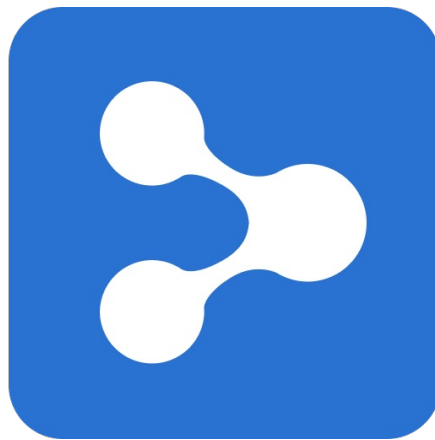


Table of Contents

Medit Link

Giriş	6
Medit Link	6
Hizmete Genel Bakış	6
Cloud Hizmeti	7
Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu	7

Medit Link > Kurulum

Sistem Gereksinimleri	8
Windows için Sistem Gereksinimleri	8
macOS için Sistem Gereksinimleri	8
Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri	8
Tarayıcılar için Öneriler	8
Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler	8
Windows'ta Kurulum	9
macOS'ta Kurulum	11
Medit Link, Medit Scan for Clinics ile bir paket olarak kurulur.	11

Medit Link > Başlarken

Kaydol & Giriş Yap	15
Medit Link Websitesi	15
Kaydol	15
Oturum Açma ve Karşılama Sayfası	17

Medit Link > Medit Link Web

Genel Bakış	19
Dashboard	20
Dashboard'a Genel Bakış	20
Medit Insights	20
Medit Insights'a Abone Olun	21
Medit Insights aboneliğinden çıkma	22
Case Box/Work Box	23
Vaka Filtreleme	23
Duruma göre filtreleme	23
Süreye göre filtreleme	23
Aramaya göre filtreleme	24
Vaka Detayları	24
Order Box/In Box	26
Sipariş Detayları	26
Order Box/In Box'daki Sekmeler	26
Case Talk	27
Case Talk Oluşturma	27
Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlama	28
Case Talk detayları	30
Web Viewer	30
Ek açıklama	31
Yorumlar	32
Gerçek zamanlı ekran paylaşımı	33
Veri Ağacı	33
Veri Ağacı Kontrolleri	33
3D Model Kontrolleri	34

Ortaklar	36
Ortak Ara	36
Ortakların Listesi	36
Ortak Daveti	37
Üyelik	38
Üyelik	38
Planım	38
Cloud Depolaması	39
Abone Ol	40
Abonelikten çık	41
Fatura Bilgisi	43
Ödeme yöntemi nasıl eklenir?	43
Ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?	45
Kullanım Kodu	46
Kullanım Kodunu Kaydet	46
Kullanım Kodunu Etkinleştir	47
Ödeme	48
Ödeme Detayları (Klinik & Lab hesapları)	48
Ödeme Hesap Bilgileri (Yalnızca Lab Hesabı)	48
Bilgilerim	49
Hesabım	49
Kurumum (Yalnızca Yönetici Hesabı)	49
Tarayıcı	50
Fiyat Listem (Yalnızca Lab Yönetici Hesabı)	50
Diğer Menü	51
Bildirimler & Güncelleme	51
Medit Bilgi	51
Medit Link App'i indirin	51

Medit Link > Medit Link App

Genel Bakış	53
Box'lara Genel Bakış	53
Başlık Çubuğu	55
Bildirimler	55
Vaka Senkronizasyon Yöneticisi	56
Yükle	57
İndir	57
Ağ Durumu	58
Menü	59
Dashborad	59
Case Box/Work Box	59
Case Box/Work Box'daki Sekmeler	60
Case Box/Work Box'daki İşlevler	60
Order Box/In Box	61
Order Box/In Box'daki Sekmeler	62
Case Talk	62
App Box	62
Trash Box	63
Ayarlar	63
Hasta Yönetimi	64
Yeni Hasta Ekle	64
Hastayı Sil	64
Hastaları Birleştir	65
Bildirimler & Güncelleme	66
Medit Link Web'e Gidin	66
Medit Bilgi	66

Ayarlar	67
Genel	67
Depolama Yönetimi	68
Periyodu Ayarla	68
Yerel Depolama	68
Cloud Depolaması	69
Bağlı Programı Ayarla	69
Dışa Aktarma Seçenekleri	69
Vaka Dönüştürme Aracı	71
Vaka Dönüştürme Aracı Nasıl Kullanılır?	71
Proxy Seçenekleri	73
Hakkında	73
Kullanıcı Kılavuzu	74
Dosya Görüntüleyici	75
Veri Ağacı	75
Model Kontrol Araçları	75
3D Model Kontrolü	75
2D Görüntü Kontrolü	76
İşlev Araçları	77
Görüntü Yakalama ve Notlar	77
Ortho Capture	77
Boşlukları Doldur	78
Kırpma	79
Oklüzyon Hizalamasını Optimize Et	81
Mandibular Hareket	82
Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme	83
Birden çok sonuç nasıl yönetilir?	83
Görüntüleme Seçenekleri	85
Durum Filtreleri	85
Liste Öğeleri	86
Görünüm Türü	87
Galeri Görünümü	88
Liste Görünümü	89
Gruplama	89
Sıralama	90
Filtreleme ve Arama	92
Tarihe Göre Filtreleme	92
Gelişmiş Arama Özellikleri	92

Medit Link > İş Akışı

Vaka Oluşturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme	94
Vakalar Oluşturma	94
Case Box'da Vaka Oluşturma (Klinik)	94
Work Box'da Vaka Oluşturma (Lab)	95
Vakaları Düzenleme	95
Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)	95
Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)	96
Vakaları Kopyalama	96
Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)	96
Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)	97
Vakayı Silme	97
Vaka Silme (Klinik ve Lab)	97
Form Bilgileri	98
Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme	98
Form Sekmesine Girin	98
CAD Sekmesine Girin	98

Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme	98
Form Sekmesine Girin	98
CAD Sekmesine Girin	99
Dişleri Köprüye Bağlama	99
Tarama Seçeneklerini Ayarlama	99
Genel seçenekler	99
Dişlere göre seçenekler	99
Favorilere Ekleme	100
Favorilere Ekle	100
Favori Şablonları Yönetme	100
Tarama/CAD üzerinde çalışma	101
Tarama Süreci	101
CAD Süreci	101
Sonuç Dosyalarını Alma	102
Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktar	102
Seçilen Dosyaları Dışa Aktar	103
Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar	104
Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma	104
Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma	105
Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar	106
Vaka listesi nasıl dışa aktarılır?	106
Medit Link Web'den Dosyaları İndirme	107
Case Box/Work Box	107
Web Viewer	107
Nasıl indirilir?	108
Vakaları Sipariş Etme/Yönetme	110
Bağlı programlardan elde edilen veriler ve kullanıcı tarafından eklenen verilerle kolayca bir vaka siparişi verebilirsiniz.	110
Vaka Sipariş Etme	110
Siparişi Onaylama – (In Box)	111
Siparişi İptal Etme – (Order Box)	111
Siparişi Reddetme (In Box)	111
Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme	111
Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)	112
Teslimat Tarihlerini Yönetme	112
Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)	112
Vakayı Tamamlama	114
Tamamlama (Work Box/In Box)	114
Vaka detaylarından bir vakayı tamamlama	114
Vaka listesinden birden çok vakayı tamamlama	114
Tamamlama (Case Box/Order Box)	115
Case Box'da sipariş edilmemiş bir vakayı tamamlama	115
Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma	117
Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme	117
Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme	118
Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme	118

Giriş

Medit Link

Medit Link, her bir taraf için optimize edilmiş bir iş akışı sağlamak amacıyla klinikler ve laboratuvarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, işbirliğine dayalı bir araçtır.

Her hesabın türüne ve izinlerine göre farklı özellikler sunar. Program, oral ve model tarayıcılarla taramadan, vaka sipariş etmeye ve protez tasarlamaya ve üretmeye kadar iş akışını yönetmek için kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Medit Link, bir web hizmeti ve bir bilgisayar uygulamasından oluşur.

Hizmete Genel Bakış

		Web	App
		- Hesabı kaydetme ve yönetme - Arama - Ortakları arama ve yönetme - Paylaşılabilir bir bağlantıyla Web Viewer aracılığıyla vakaları paylaşma - Uygulamadan oluşturulan vakalara erişme - Siparişleri yönetme	- Form bilgilerinin girilmesi - Tarama - Sipariş verme/alma ve ödeme yapma - CAD ile bağlantı - Hasta yönetimi
Klinik	Admin	Arama yapın ve kurumunuzu yönetin, ödeme bilgilerini yönetin ve vakaları paylaşın. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Ortaklar - Üyelik< 0>- Ödeme - Bilgilerim	Form bilgilerini girin, tarayın, CAD ile bağlantı kurun, sipariş verin, ödeme yapın ve hastaları yönetin. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box< 0>- Trash Box - Hasta Yönetimi
	Üye	- Case Box - Case Talk - Bilgilerim	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Lab	Admin	Arama yapın ve kurumunuzu yönetin, ödeme bilgilerini yönetin ve vakaları paylaşın. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Ortaklar - Üyelik - Payment - Bilgilerim	Form bilgilerini girin, tarayın, CAD ile bağlantı kurun ve siparişleri alın/yönetin. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Üye	- Work Box - Case Talk - Bilgilerim	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ödeme

Cloud Hizmeti

Medit Link, AWS (Amazon Web Services) aracılığıyla veritabanı ve dosyaların otomatik olarak yüklenmesini/indirilmesini destekler.

Cloudda depolanan veriler, kuruluştaki birden fazla kullanıcının bilgisayarlarıyla otomatik olarak senkronize edilir, böylece aynı verilere herhangi bir bilgisayardan herhangi bir zamanda erişebilirler. Cloud tabanlı yedekleme ve kurtarma, tüm verilerinizi güvende tutar. Ani bilgisayar arızası nedeniyle veri kaybı durumunda bile verilerinizi güvende tutar.

Cloud hizmeti, ortak dış hekimlerinin ve laboratuvarların, taramaları e-postayla gönderme veya manuel olarak aktarma zahmetine girmeden verileri hızlı bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Hasta bilgileri dahil tüm veriler güvenli bir şekilde şifrelenir, saklanır ve iletilir. Medit, HIPAA ve GDPR gibi tıbbi yasalara ve yönetmeliklere uygundur.

Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu

Medit Link kendi sipariş ve ödeme sistemini sunar.

- Medit Link, dış hekimleri ve dış laboratuvarları arasında sözleşmeler oluşturmanıza ve verileri hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.
- Sipariş durumunu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Kredi kartı destekli sistem, Stripe (www.stripe.com) ve I'mPort (<http://www.iampor.com>) gibi online ödeme platformlarının ödeme modülleri ile çalışarak ödeme hizmetlerini kolay ve rahat hale getirir.

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ödeme

Sistem Gereksinimleri

iNot

Tarama yazılımını tarayıcınızla birlikte kullanmak istiyorsanız lütfen Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs için sistem gereksinimlerine bakın.

Windows için Sistem Gereksinimleri

	Laptop & Masaüstü
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz veya üzeri
RAM	16 GB veya üzeri
Ekran	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) veya üstü/veya eşdeğeri AMD ekran kartı
İşletim Sistemi	Windows 8 64 Bit (32 Bit'te mevcut değil) veya üzeri

macOS için Sistem Gereksinimleri

	Mac
İşlemci	8 çekirdekli, 7 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ile M1
RAM	16 GB veya üzeri
İşletim Sistemi	Monterey 12

Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri

Tarayıcılar için Öneriler

	Tarayıcılar
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler

Tür	Android	iOS
Cihaz	Galaxy S7 eşdeğeri veya üstü	iPhone 7 eşdeğeri veya üstü
İşletim Sistemi	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB veya üzeri	2 GB veya üzeri
AP	Snapdragon 710 üzeri	A10 Fusion


Windows'ta Kurulum

Medit Link, tarama edinme programları olan Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs ile bir paket olarak kurulur.


1. Medit_LinkSetup.exe dosyasını çalıştırın.
2. Kurulum için dili seçin.
3. Medit Link kurulumu için klasörü seçin. Lütfen lisans hüküm ve koşullarını okuyup kabul edin ve "YÜKLE"yi tıklayın.

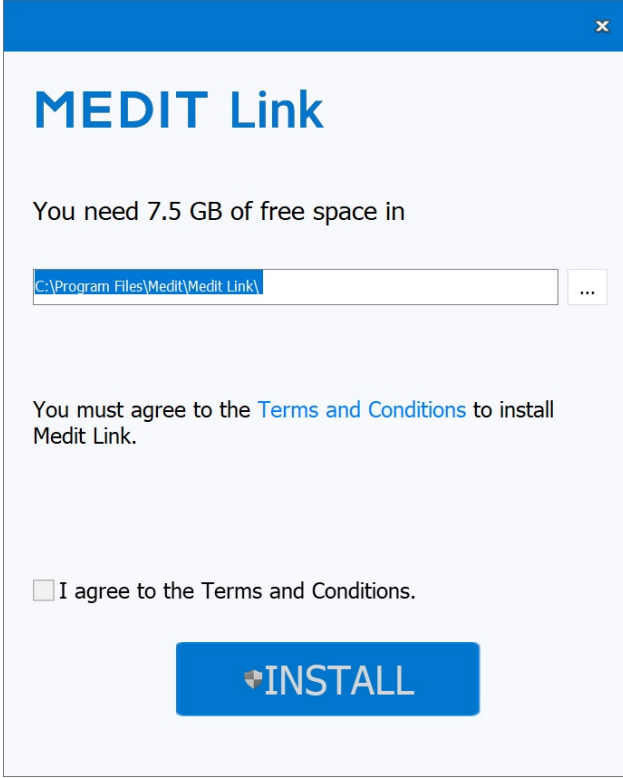

4. Bir sonraki adıma geçmeden önce tarayıcı kablosunun bilgisayardan çıkarıldığından emin olun. Tarayıcı bilgisayarınıza bağlıysa kurulum devam etmeyebilir.
5. Program otomatik olarak yüklenecektir ve birkaç dakika sürebilir. Kurulum tamamlanana kadar bilgisayarınızı kapatmayın veya fişini çekmeyin.

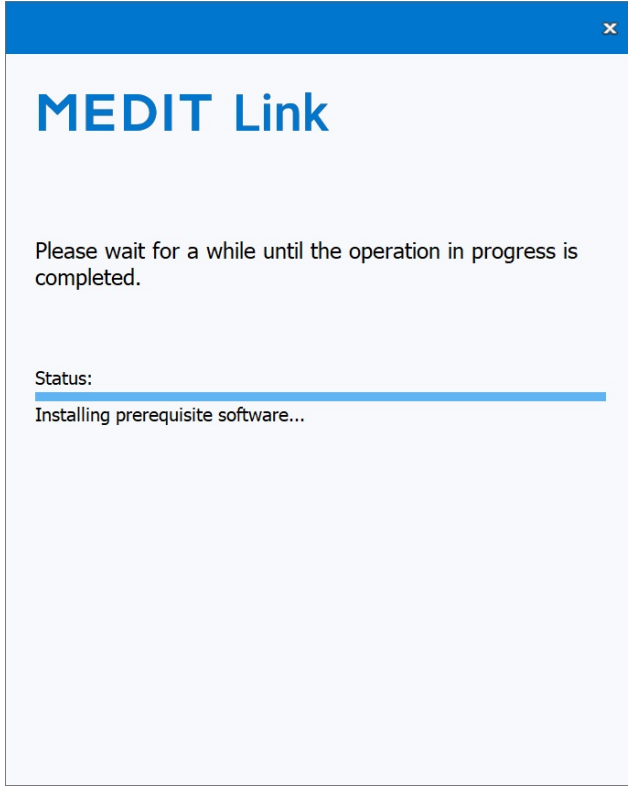

6. Kurulum tamamlandıktan sonra lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tarayıcınız yoksa PC'yi yeniden başlatmadan ilerleyebilirsiniz.

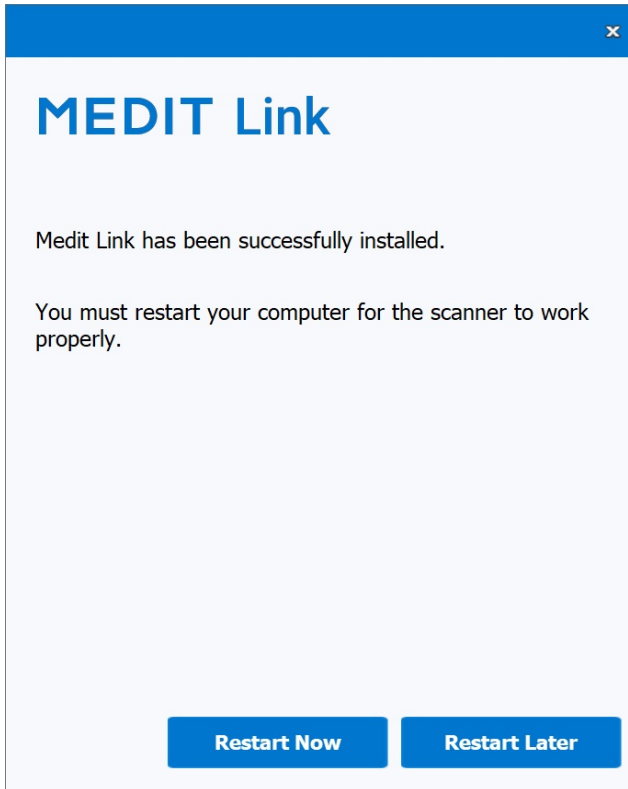


iNot

Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız, tarayıcı düzgün çalışmayabilir.


macOS'ta Kurulum

Medit Link, Medit Scan for Clinics ile bir paket olarak kurulur.


1. Medit_Link_x.x.x.pkg dosyasını çalıştırın ve “Devam Et”e tıklayın.

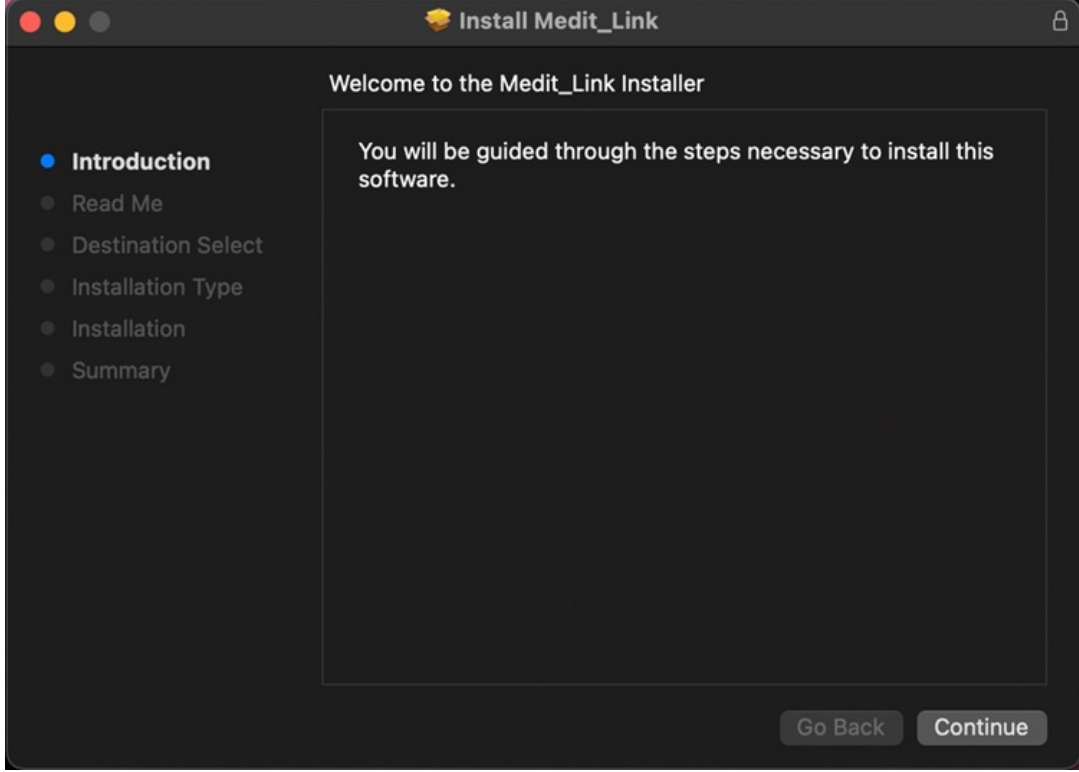


2. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve “Devam Et”e tıklayın.

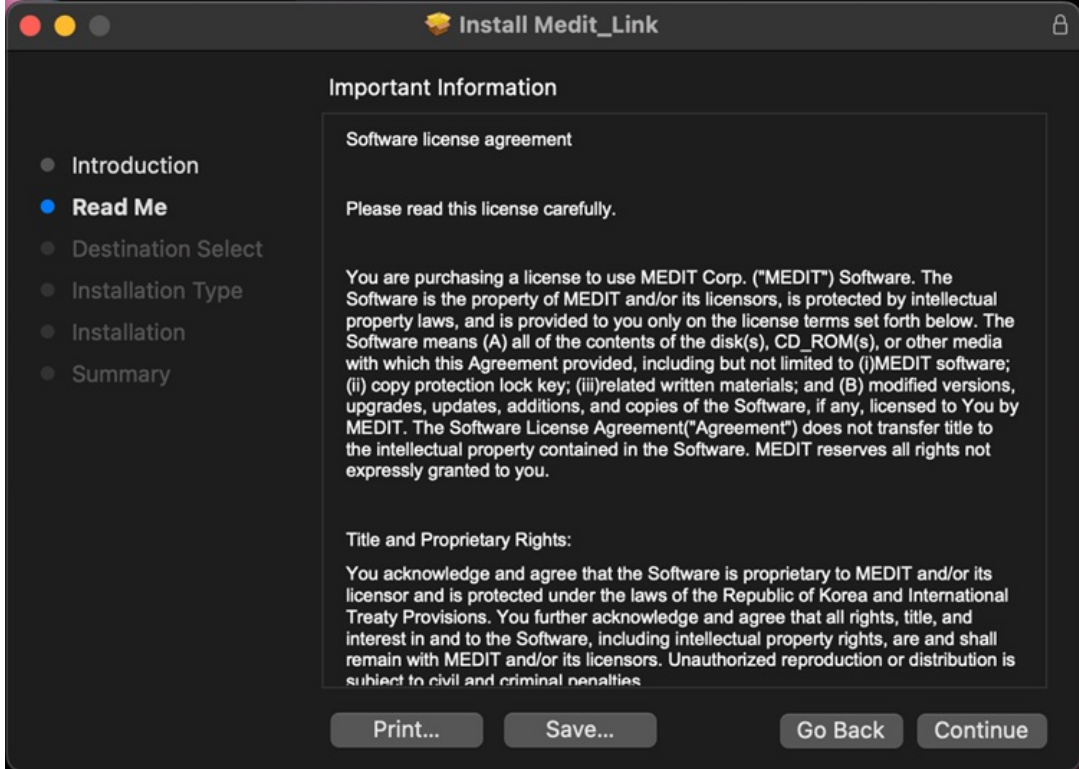

3. Kurulacak diski seçin ve “Devam Et”e tıklayın.

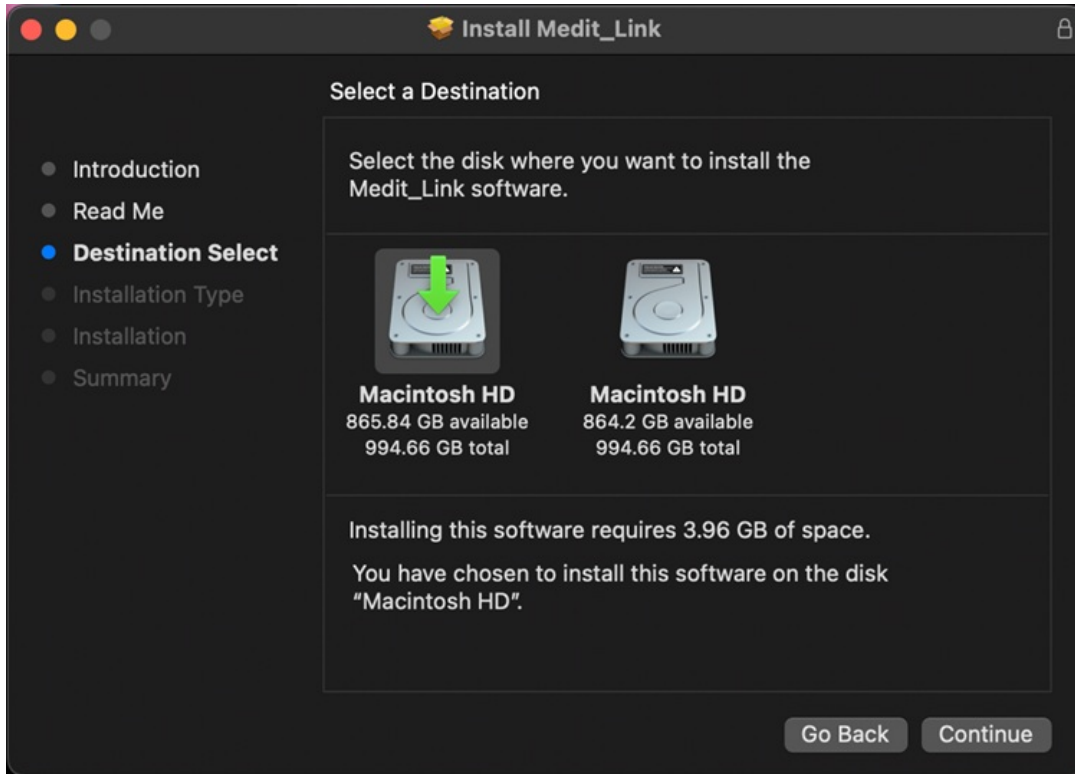


4. Kurulum hedefini deęiřtirmek için “Yükleme Konumunu Deęiřtir...”e tıklayın.

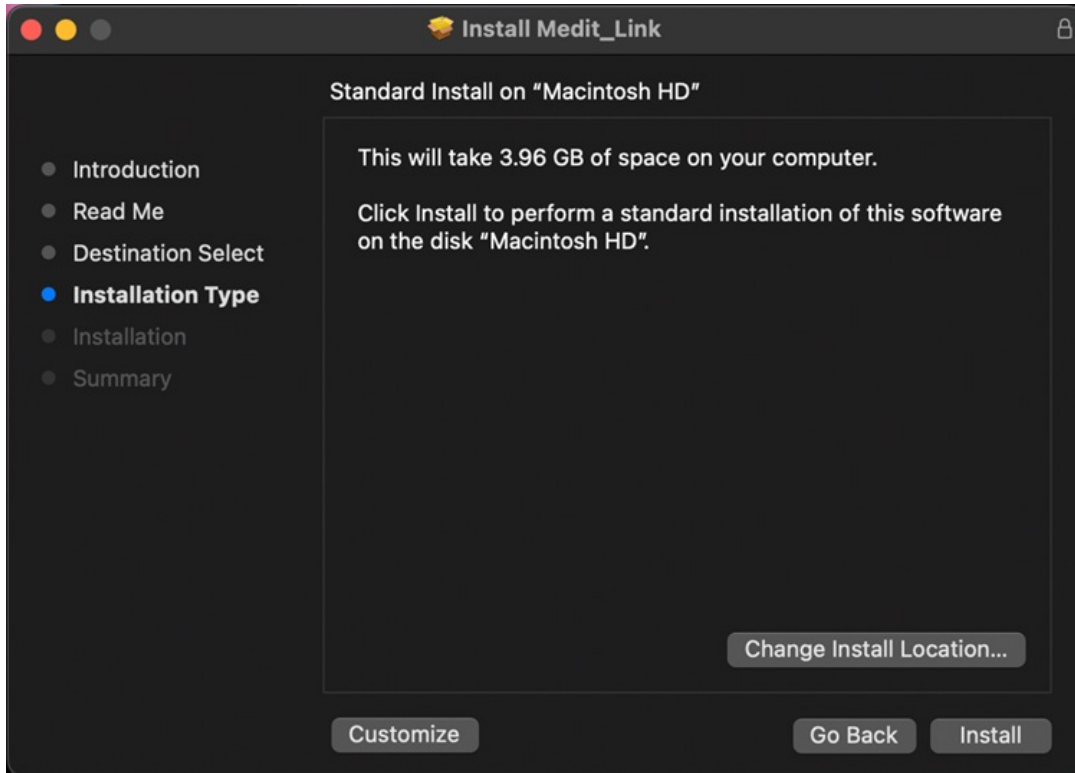


5. “Yükle”ye tıklayın ve istenirse kurulumu izin vermek için Mac şifrenizi yazın.



6. Kurulum tamamlanana kadar bekleyin.

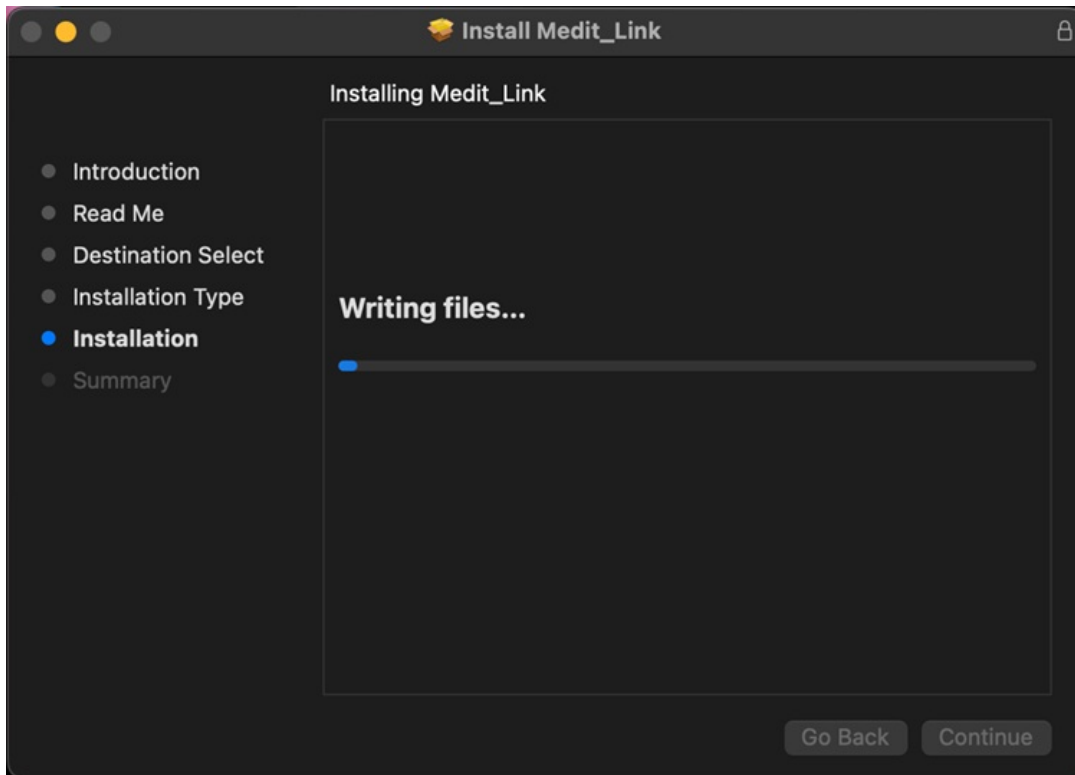

7. Kurulum penceresinden çıkmak için "Kapat"a tıklayın.

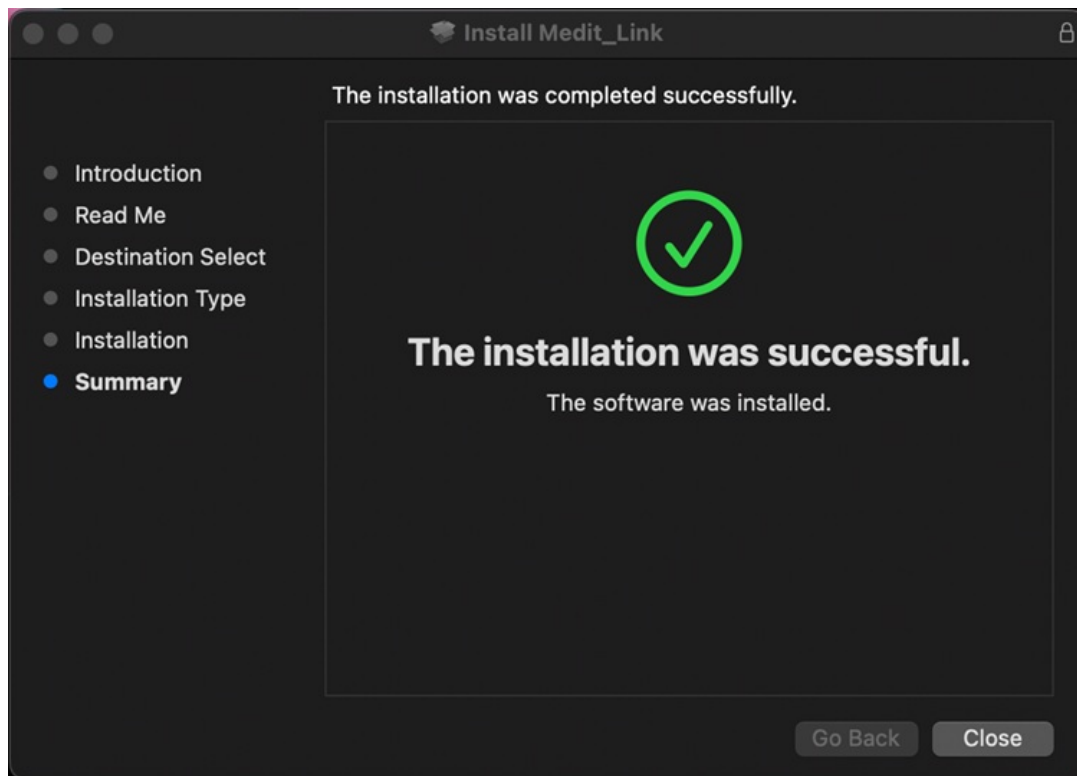

Kaydol & Giriş Yap

Medit Link Websitesi

Medit Link hizmetine www.meditlink.com adresinden kaydolun.



Kaydol

Medit Link hizmetini kullanmak için bir hesaba kaydolmanız gerekir. Klinik veya laboratuvar olarak hesap oluşturduktan sonra Medit Link'in sağladığı özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar, üyelik kaydı yapmak için aşağıdaki dört hesap türünden birini seçebilir ve hesap türüne bağlı olarak hizmeti tam veya sınırlı özellik ve ayrıcalıklarla kullanabilirler.

- Klinik- Admin
- Klinik - Üye
- Lab - Admin
- Lab - Üye

Yönetici genellikle kuruluşunuzun bir temsilcisidir ve Medit Link'in tüm işlevlerine ve hizmetlerine tam erişime sahip olacaktır. Buna karşılık, üye hesabının erişimi sınırlıdır.

Üyelik için kaydolmak için şu adımları izleyin:

1. "Henüz bir hesabınız yok mu?"ya tıklayın. Giriş sayfasından kaydolun.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾

Log In


Don't have an account? Sign up.

English (United States) ▾

2. Sağlanan açıklamaları okuduktan sonra, istenen hesap türü için "Kaydol" düğmesini tıklayın.



Clinic

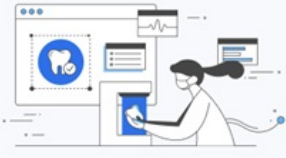

Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. Klinik veya lab adını girin ve ardından istediğiniz hesap türüne bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
- Yönetici olarak kayıt yaptırıyorsanız, girilen adın uygun olup olmadığını görmek için "Kullanılabilirliği Kontrol Et"e tıklayın.
 - Üye olarak kayıt oluyorsanız, "Ara" düğmesini tıklayın. Yönetici, siz kaydolmadan önce kuruluşunuzu kaydettirmiş olmalıdır.
4. Kayıt formunun geri kalanını doldurun ve "Kaydol" düğmesini tıklayın. Size bir doğrulama e-postası gönderilecektir.

5. Kayıt işlemini tamamlamak için, alınan bağlantıyı kullanarak e-posta adresinizi doğrulayın.

Oturum Açma ve Karşılama Sayfası

1. Oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve "Oturum Aç"ı tıklayın.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? -

Log In

Don't have an account? Sign up.

English (United States)

2. Kurum bilgilerini doldurmadıysanız, aşağıdaki iletişim penceresi görünecektir.

iNote

Medit Link hizmetlerini kullanmak için yönetici hesabı kullanılarak kuruluşunuzla ilgili bilgiler girilmelidir.

Welcome to Medit Link

Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.

Address Information Organization Information Additional Information Scanner Information

Here are four simple steps to get you started with your personal order system.

You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.

Step 1

Fill in your organization information.

Step 2

Select a partner clinic or lab you want to work with.

Step 3

Create a partnership and contract with your selected partner.

Step 4

Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases.

Set Up Later Set Up Now

3. "Şimdi Kur" düğmesini tıklayın ve adım adım Adres Bilgisi, Kurum Bilgileri, Ek Bilgi ve Tarayıcı Bilgilerini girin.

Kayıt sırasında pazarlama bilgileri almayı kabul ettiyseniz, üreticiden ürün ve hizmet hakkında faydalı bilgiler alacaksınız.

4. Karşılama sayfasında girilen bilgiler, Medit Link Web'de Bilgilerim > Kurumum bölümünden istenildiği zaman düzenlenebilir.

Genel Bakış

MEDIT Link

https://stage-www.meditlink.com/casebox?lang=en-US

MEDIT Groupware Sign in - ClearCorre... ChatGPT DeepL 번역: 세게... Papago Medit NAS Admin Medit Link Bloadmin Medit Link Enterprise QuickBuild - the bu... TeamViewer Manag... Grammarly (3) Facebook Medit - Agent > 다른 열거됨?

The more information you provide about your workplace, the higher we rank your reliability. wonhoon choi

Case Box

Dashboard

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

View Options

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name

Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Dashboard'a Genel Bakış

Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

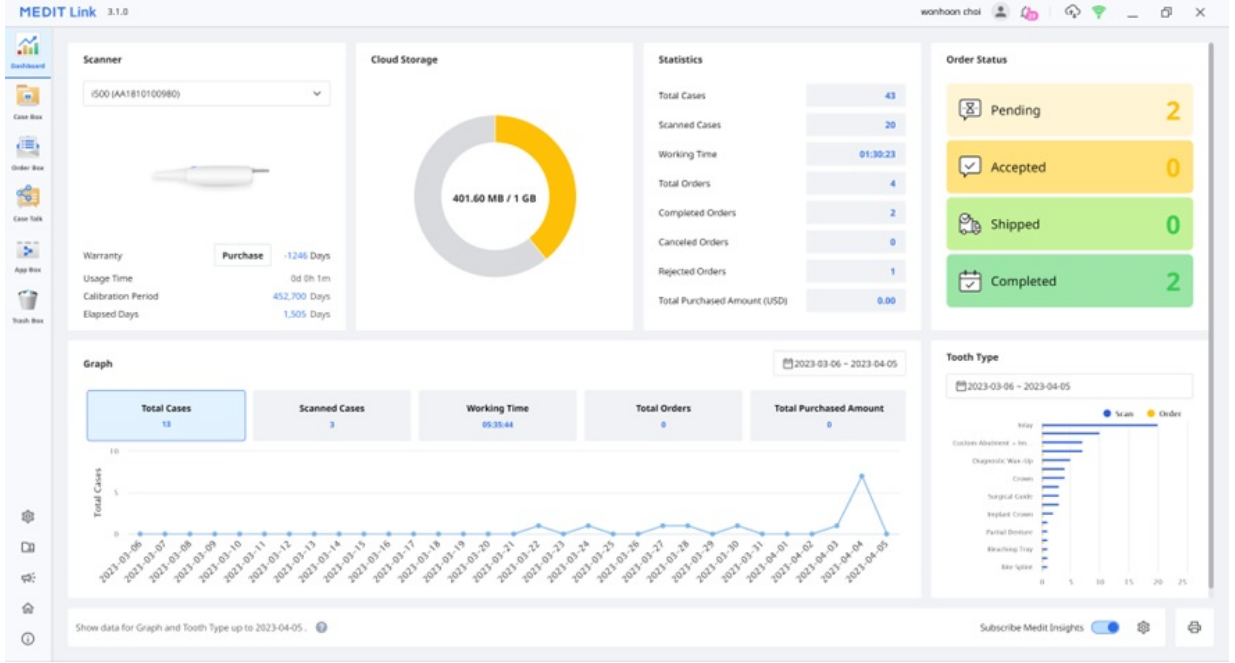

Grafikler ve çizelgeler, Medit Link'te yapılan tüm çalışmalar için istatistikleri gösterir.

Tarayıcı	Garanti, tarayıcı kullanım süresi, kalibrasyon aralığı ve kalibrasyon için geçen süre dahil olmak üzere aktif tarayıcılar hakkında bilgi sağlar.
Cloud Depolaması	Cloud'ın toplam kapasitesini ve kullanımdaki alanı gösterir.
İstatistikler	İş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Sipariş Durumu	Sipariş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Grafik	Dönemsel olarak işle ilgili bilgilerin grafiğini sağlar.
Diş Türü	Tedavi bilgilerine göre tarama ve sipariş sayısı hakkında istatistikler sağlar.


Medit Insights

Medit Insights, kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olan bir raporlama hizmetidir.

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Medit Insights

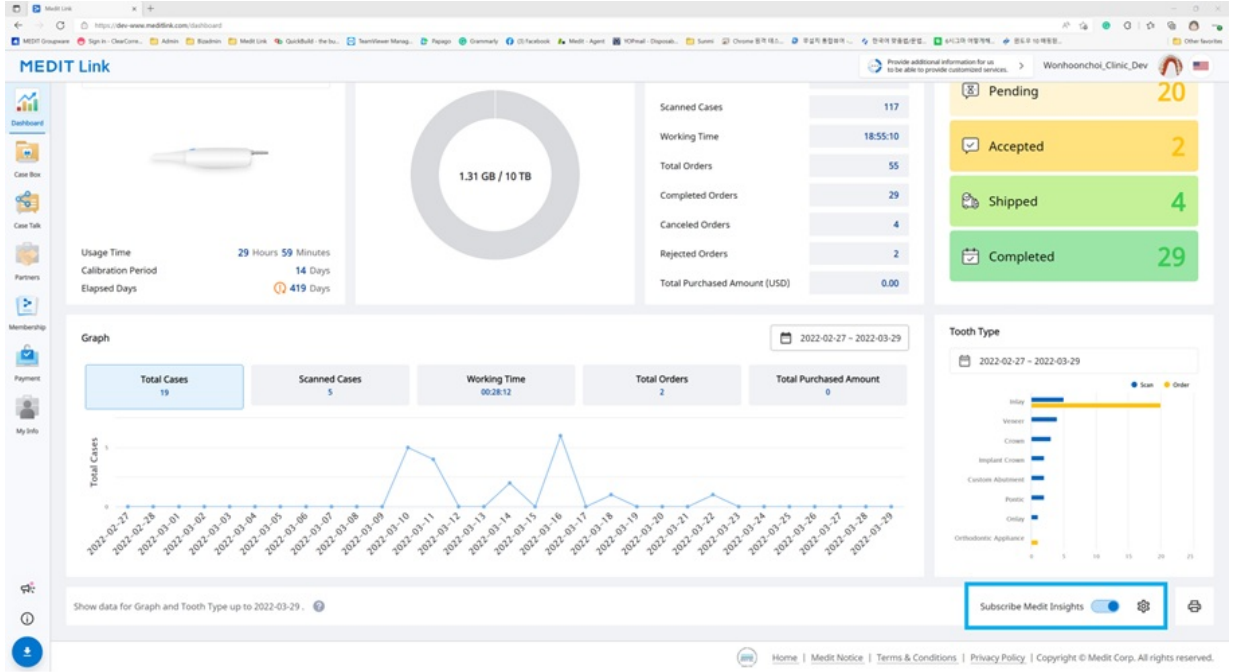

Medit Insights'a Abone Olun

Medit, raporlama hizmeti sağlar ve kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olur. Ek kayıt işlemi gerekmez. "Medit Insights'a Abone Ol" özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.

Medit Link hesabı için kullandığınız e-posta adresini kullanmıyorsanız, Medit Insights'ı almak için başka bir e-posta adresi ayarlayabilirsiniz.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

[Cancel](#) [OK](#)

Her ayın ikinci günü, aşağıda gösterilen istatistikleri içeren bir e-posta alacaksınız.




Banner	Medit burada yararlı ipuçları ve bilgiler sağlar. * Bannerı görmek istemiyorsanız, Bilgilerim > Hesabım'daki Pazarlama ve Tanıtım Sözleşmesi onay kutusunun işaretini kaldırın.
İstatistiki Bilgiler	Tarama süresi, oluşturulan vaka, en çok sipariş edilen lab vb. gibi istatistik bilgileri görüntülenir.
Medit Link'i İndir	Buton, Medit Link indirme bağlantısını sağlar.
Dashboard	Tüm istatistiksel bilgiler, Dashboard bilgilerinize dayanmaktadır. Dashboard'da daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.

Medit Insights aboneliğinden çıkma

Panoda "Medit Insights'a Abone Ol" seçeneğini devre dışı bırakın veya alınan e-postadaki "Abonelikten çık" seçeneğine tıklayın.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) veya Work Box (Lab), kullanıcının Medit Link uygulamasında oluşturduğu tüm vakaları gösterir. Aynı bir program yüklemeyen dosyaları bir web tarayıcısı aracılığıyla görebilirsiniz.

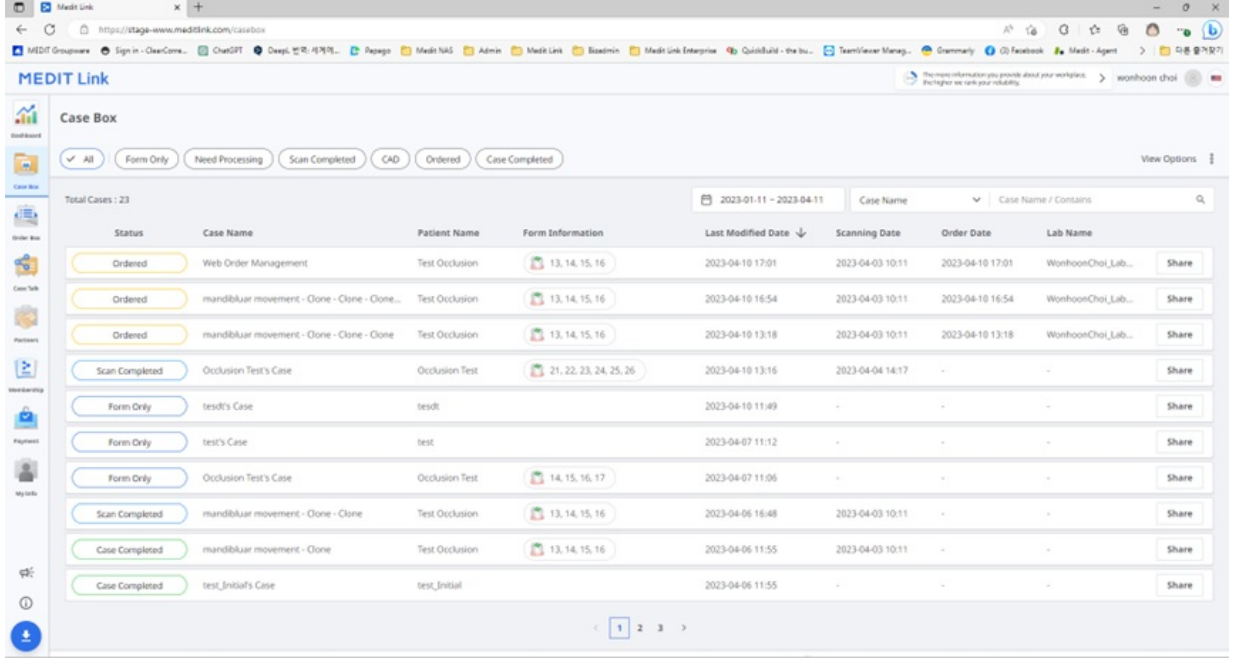

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. Below the filters, a table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Ordered	Web Order Management	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 17:01	2023-04-03 10:11	2023-04-10 17:01	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 16:54	2023-04-03 10:11	2023-04-10 16:54	WonhoonChoi_Lab...
Ordered	mandibular movement - Clone - Clone - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-10 13:18	2023-04-03 10:11	2023-04-10 13:18	WonhoonChoi_Lab...
Scan Completed	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-10 13:16	2023-04-04 14:17	-	-
Form Only	test's Case	test's	-	2023-04-10 11:49	-	-	-
Form Only	test's Case	test	-	2023-04-07 11:12	-	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-07 11:06	-	-	-
Scan Completed	mandibular movement - Clone - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-06 11:55	-	-	-

Vaka Filtreleme

Duruma göre filtreleme

Durumlarına göre vakaları filtreleyebilirsiniz.

Filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed.

- Kullanıcı görüntülemek istediği durumu tıklayabilir. Tarayıcı yalnızca seçilen duruma sahip vakaları gösterecektir.
- Kullanıcı aynı anda birden fazla durum seçebilir.

Hesap türüne göre aşağıdaki durum türü sağlanır:

Case Box (Klinik)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Lab)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Süreye göre filtreleme

Belirlediğiniz süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

- Süre filtresini tıklayın.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

- Aralığı seçin.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Hepsi: Tüm vakaları gösterir.
- Özel Aralık: O dönem içinde değiştirilen vakaları görüntülemek için başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtin.
- Bugün: İçinde bulunulan gün değiştirilen vakaları gösterir.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki güne ait vakaları gösterir.
- Son 7 gün: İçinde bulunulan gün hariç 7 günden önceki vakaları gösterir.
- Son 30 gün: İçinde bulunulan gün hariç 30 günden önceki vakaları gösterir.
- Son 90 gün: İçinde bulunulan gün hariç 90 günden önceki vakaları gösterir.
- Bu Ay: İçinde bulunulan ayın vakalarını gösterir.
- Önceki Ay: Önceki ayın vakalarını gösterir.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Aramaya göre filtreleme

Gerekli bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde aramak için arama yeteneklerinden yararlanabilirsiniz.


Case Name

Case Name / Contains

Klinik/lab hesabına göre arama seçenekleri:

Case Box (Klinik)	Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Laboratuvar Adı
Work Box (Lab)	Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID

Vaka Detayları

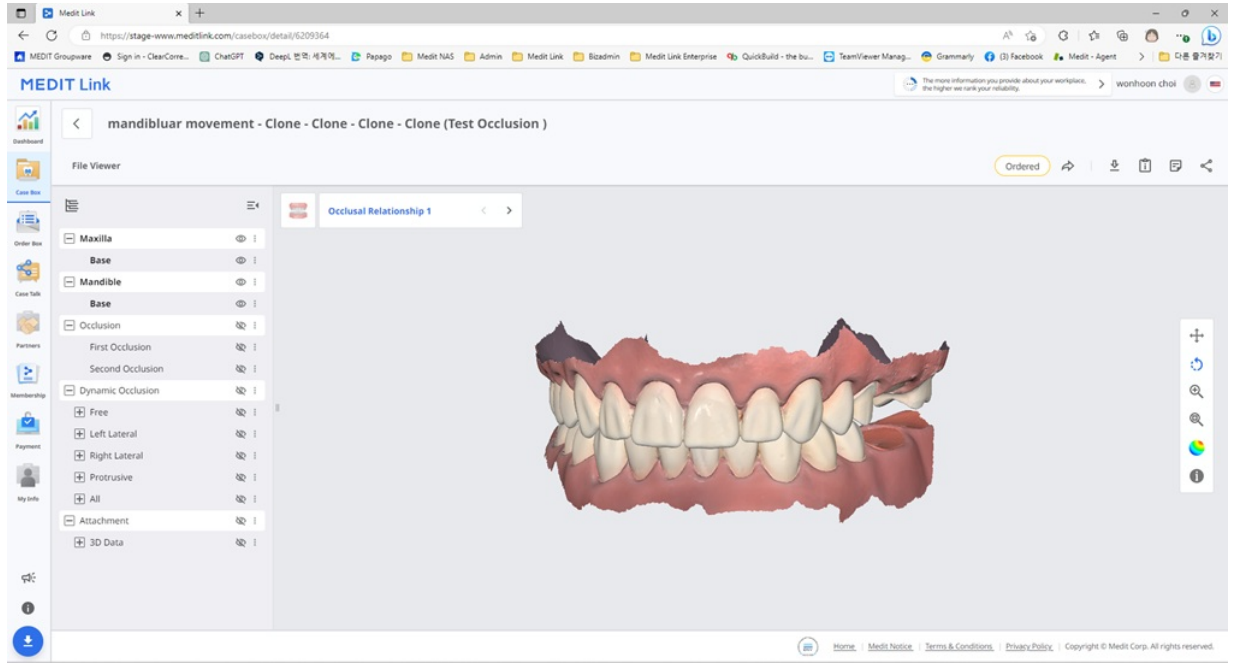

Aşağıdaki vaka yönetimi araçları, Case Box/Work Box'ta sağlanmaktadır.

	Vaka Durumu	Vakanın durumunu gösterir.
	Detaya Git	Aynı vaka için başka bir kutuda bir kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	İndir	Vakadaki dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.
	Not & Etiketler	Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.
	Paylaş	Paylaşmak için bir bağlantı oluşturun. Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir. Bağlantıyı herhangi biriyle veya yalnızca belirli kişilerle ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Özel bilgilerin güvenliğini sağlamak için bir PIN kodu veya bağlantı son kullanma tarihi ayarlanabilir.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) veya In Box (Lab), Medit Link uygulamasında sipariş edilen vakaları gösterir.

Sipariş Detayları

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top bar includes the Medit Link logo and a user profile. The left sidebar contains navigation icons for Dashboard, Case Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area is divided into two sections: Order Details (left) and Order List (right). The Order Details section includes fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, Expected Delivery Date, and a Memo. The Order List section displays a table of orders with columns for No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The interface is annotated with numbered circles 1 through 6 indicating specific features.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
14	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
15	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
16	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
23	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
24	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
25	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
26	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
27	Inlay	-	Multi-Layered Zr...	None	0.00
28	Onlay	-	Glass Ceramic	A3.5	0.00
Total					USD 0.00

- 1 Vaka adını ve hasta adını gösterir.
- 2 Sipariş yönetimi için işlevler sağlar (kabul etme/iptal etme; teslim etme/alma).
- 3 Mevcut sekmeleri gösterir: Sipariş, Dosya Görüntüleyici
- 4 Vakaları ve dosyaları yönetmeye yönelik işlevleri gösterir: Vaka durumu, ayrıntılı bilgi için kısayollar, vaka bilgisi, not & etiketler vb.
- 5 Sipariş numarası, hasta adı, ortak adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve not & etiketler dahil olmak üzere siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
- 6 Sipariş edilen ürün bilgilerini ve teslimat durumunu gösterir.


Order Box/In Box'daki Sekmeler

Sipariş	Dosya Görüntüleyici
Sipariş ID, hasta adı, hesap adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi, not ve etiketler gibi siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol edin.	Tarama/CAD işlemleri tarafından oluşturulan dosyaları görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar, belirttiğiniz belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üyeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki "Case Talk" aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.

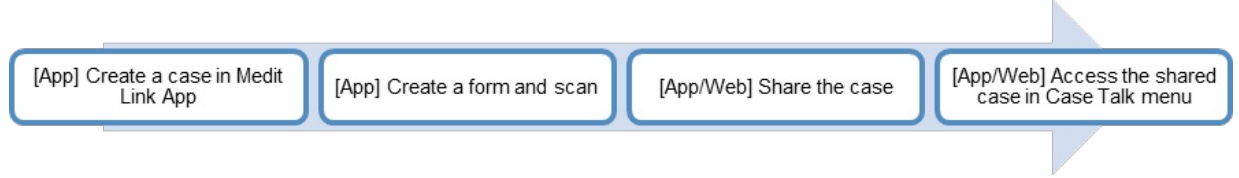

Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.

Case Talk Oluşturma

Case Box/Work Box'ta oluşturulmuş bir vakaya paylaşılan bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Paylaşmak istediğiniz bir vaka bulun ve sağdaki "Paylaş" düğmesine tıklayın.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	Share
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial	-	2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial	-	2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin.

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

☒ Allow comments

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Şunlarla paylaş	- Herkesle paylaş Paylaşılan bir bağlantı oluşturur. Dosyaları herkesle paylaşabilirsiniz. - Belirli kişilerle paylaşın Paylaşılan bir bağlantı oluşturur ve belirli kişilere gönderir.
Şununla paylaş	"Belirli kişilerle paylaş"ı seçerseniz, bağlantıyı belirli kişilerle çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz. - E-Posta Adresi - SMS - Ortaklar
Sona Erme Tarihi	Bağlantı için son kullanma tarihini ayarlayın. Bağlantının süresi dolduktan sonra, paylaştığınız kişiler artık dosyalara erişemez. Son erişim tarihini bugünden itibaren 90 güne kadar uzatabilirsiniz.
PIN Kodu	Veri güvenliğini sağlamak için 6 basamaklı bir erişim kodu ayarlayın.
Hastanın adını paylaşın	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kişiler hastanın adını görecektir.
İndirme İzni Ver	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.
Yorumlara izin ver	- Bu seçeneği işaretlerseniz, paylaşılan bağlantı üzerinden iletişim kurabilirsiniz. - Seçeneğin işaretini kaldırırsanız, alıcı yalnızca sizin yorumlarınızı görebilir ancak kendi yorumlarını ekleyemez.
Yorum	Yorum kısmına mesaj bırakabilirsiniz.

Case Talk detayları

Paylaşılan vakadaki dosyaları görebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler Case Talk ayrıntıları sayfasında mevcuttur.

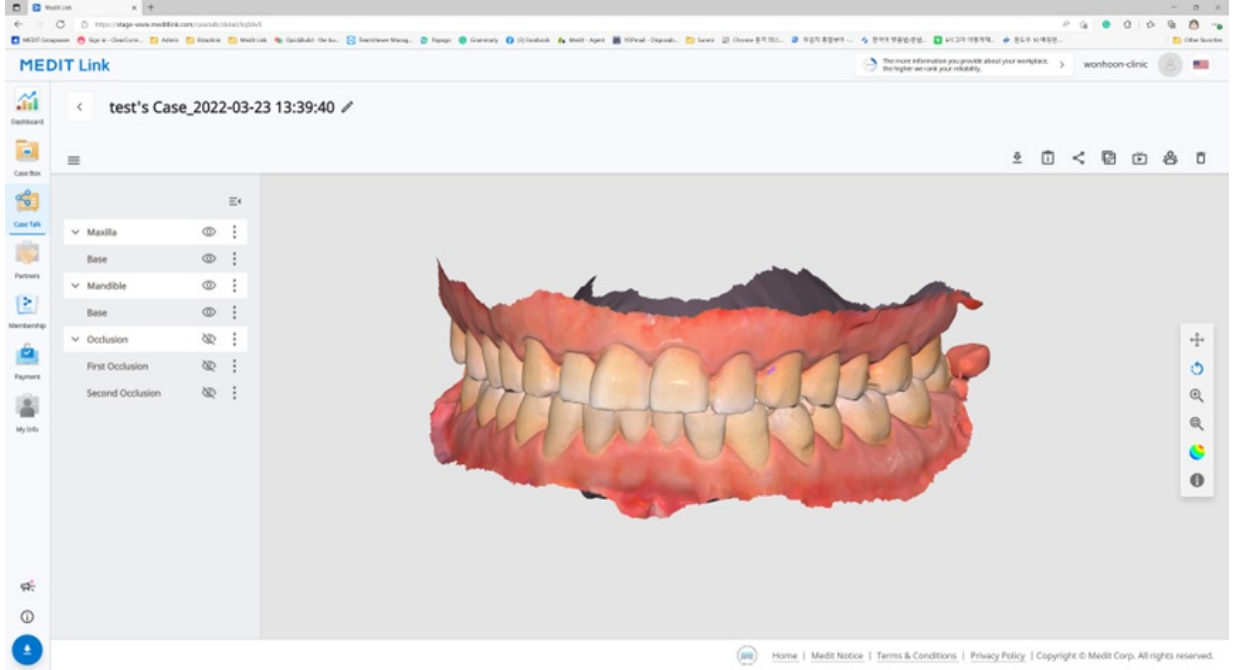

	İndir	Bu vakadaki tüm dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarını değiştirin.
	Bağlantıyı Kopyala	Bağlantıyı panoya kopyalar. Paylaşılan öğeyi, kopyalanan bağlantıyı kullanarak web tarayıcısı üzerinden görebilirsiniz.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı tüm kullanıcıları gösterir.
	Sil	Paylaşım bağlantısını siler. Silinen paylaşılan bağlantıya artık erişilemez.

iNot


Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Web Viewer

Paylaşılan verileri bir web tarayıcısında Case Talk aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Bağlantıya erişimi olan kişilerle ek açıklamalar ve yorumlar kullanılarak iletişim kurmak mümkündür.

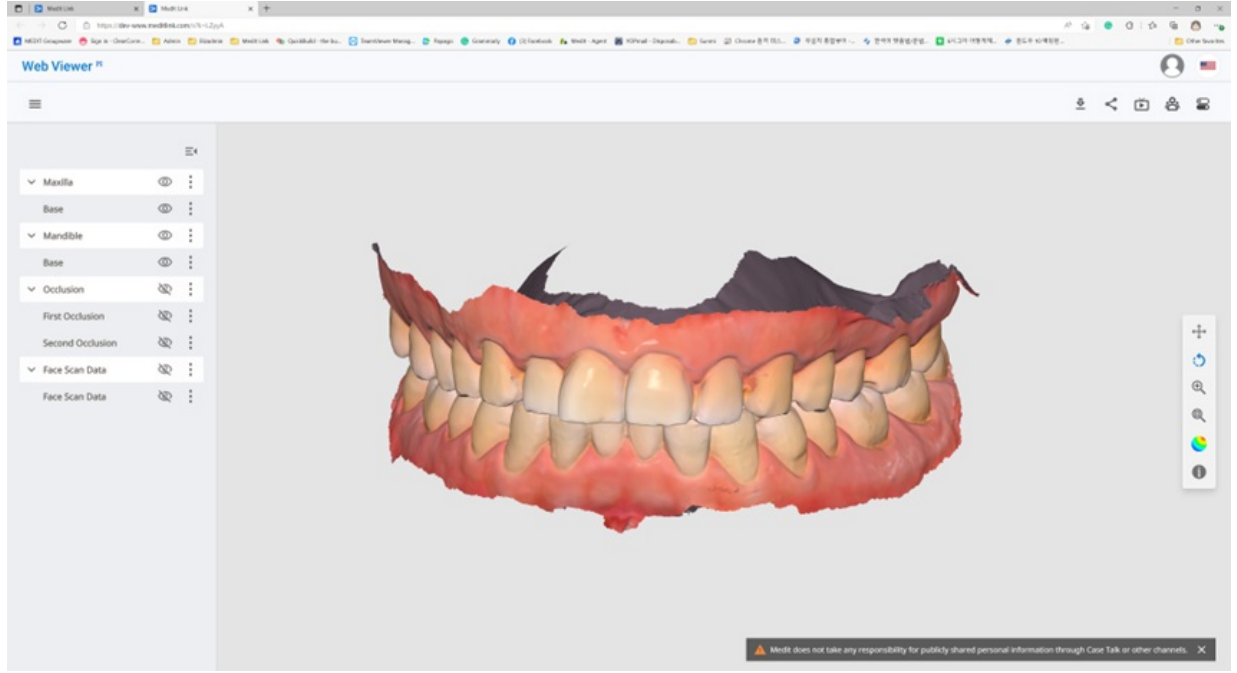

	İndir	Bu vakadaki tüm dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarlarını değiştirin.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı olan tüm kullanıcıları gösterir.
	Diş Etiketleme	Diş etiketleme sistemini değiştirin.


iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Ek açıklama

3D model üzerinde belirli bir konuma ek açıklamalar ekleyebilirsiniz. Bağlantıya sahip olan herkes, eklediğiniz ek açıklamaları görüntüleyebilir.

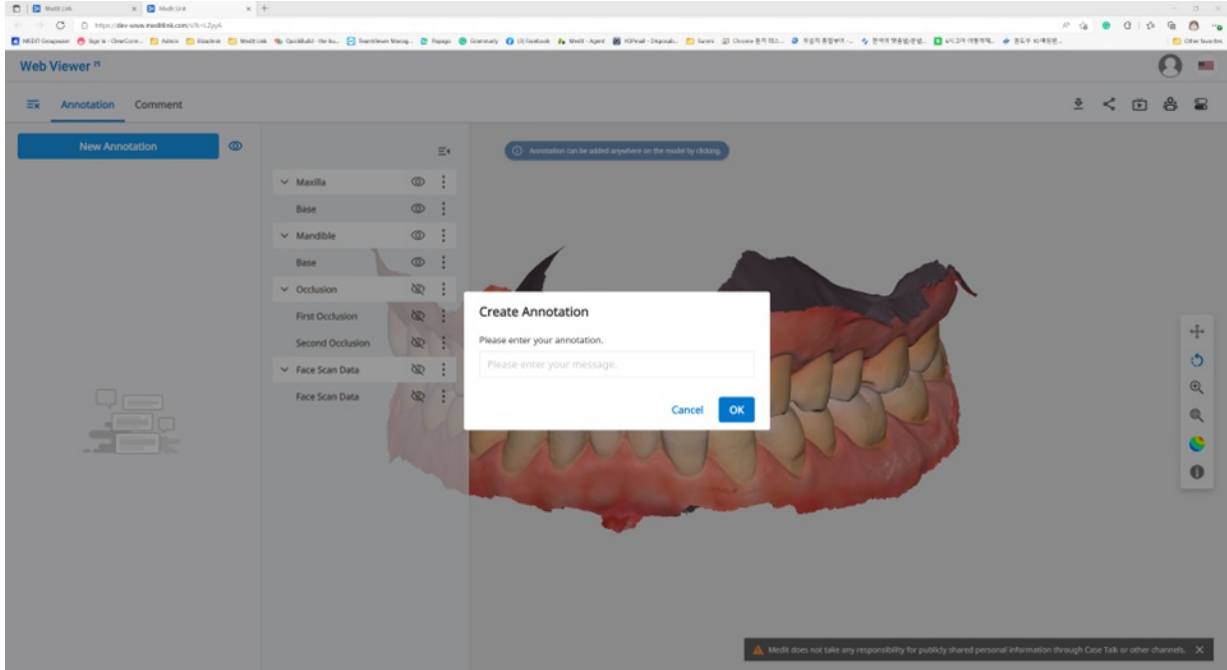

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ek açıklama

1. Sol üst köşedeki menü simgesini bulun ve "Ek Açıklama" sekmesini seçin. Verilerin herhangi bir yerine bir tıklama ile açıklama eklemek için "Yeni Ek Açıklama" düğmesini kullanın.
2. Mesajı yazın, ardından kaydetmek için "Tamam"a tıklayın.

Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. Ek açıklamaları basit bir iletişim kanalı olarak kullanabilirsiniz. Yanıt girmek için oluşturulan ek açıklamaya tıklayın ve "Gönder"e basın.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi  

Annotation 1

 09-09 20:31

Send

Yorumlar

Web Viewer menüsündeki "Yorum" sekmesi aracılığıyla bağlantıya erişimi olan kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz.

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Yorum

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı


Ekranınızı gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı

1. Web Viewer ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşmak için "Canlı"ya tıklayın.

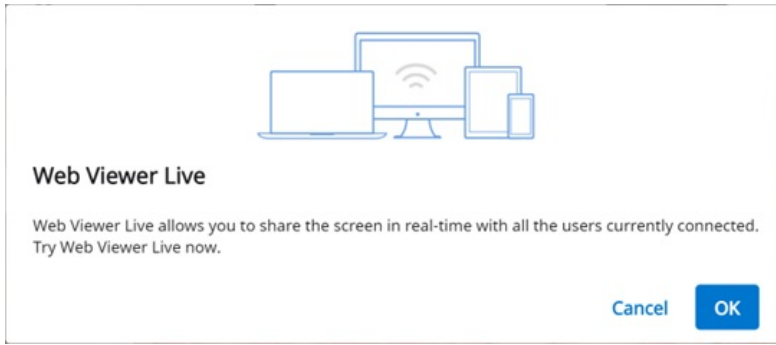



2. Ekranınızı paylaşmaya başlamak için "Tamam"ı tıklayın.
3. Bağlantıya erişen diğer kişilerin ekran paylaşımını kabul etmesi gerekir.
4. Ekran paylaşımını başlatan kullanıcının ekranı, isteği alan kişinin ekranı ile senkronize olarak görüntülenir.

Veri Ağacı





Tüm veriler, veri ağacındaki niteliklere göre gruplandırılır ve görüntülenir. Verileri gösterebilir veya gizleyebilir, opaklığı ayarlayabilir ve benzeri işlemleri yapabilirsiniz.

Veri Ağacı Kontrolleri

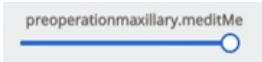Göster/Gizle	Verileri göstermek veya gizlemek için 'göz' simgesini tıklayın. Veri görünürlüğünü bir grup veya tek dosya olarak kontrol edin.
Opaklık	Opaklık kaydırma çubuğunu görmek için mouseu görünür bir öğenin üzerine getirin. Verilerinizin opaklığını değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın. 

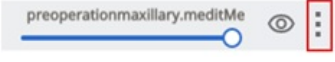Genişletilmiş Menü	Genişletilmiş menü, her Veri Ağacı ögesinin sağ tarafında sağlanır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:  • Yalnızca Bunu Göster: Geçerli olan dışındaki diğer tüm verileri gizleyin. • Gizle: Mevcut verileri gizler. • Kopya Oluştur: Geçerli vaka içindeki verileri klonlayın. • Dışa Aktar: Verileri yerel bir PC'ye kaydedin. • Sil: Geçerli verileri veya veri grubunu silin.
--------------------	--

3D Model Kontrolleri

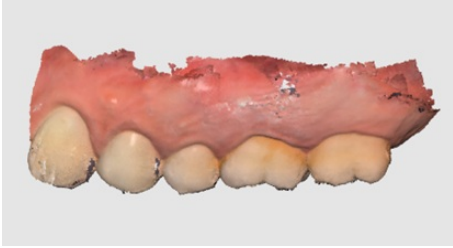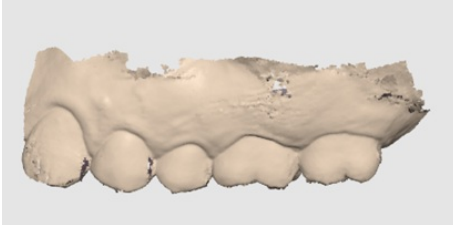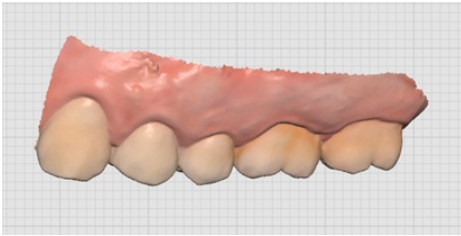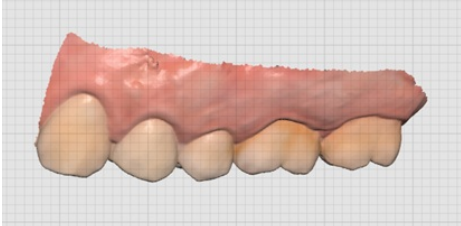	Pan	Modeli hareket ettirin.
	Döndür	Modeli döndürün.
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.
	Sığdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.
	Model Görüntüleme Modu	Verileri gerçek doku renklerinde gösterin.
		Verileri tek bir renkte gösterin.
	Doku Açık	
	Doku Kapalı	
	Izgara Ayarları (mm)	Izgara'yı arka planda gösterir.
		Izgara'yı modelin üzerine yerleştirin.
	Izgara Açık	
	Kaplama Açık	



Izgara Kapalı

Izgarayı gizleyin.

Ortaklar

Ortaklık talebinde bulunmak için potansiyel ortaklar arayabilir ve mevcut ortakların ve sözleşmeli ortakların listesini görüntüleyebilirsiniz.


iNot

Google Haritalar kullanan hizmetler Medit Link Çin'de mevcut değildir.

Ortak Ara

Medit Link kullanıcılarını işletme adlarına ve/veya adreslerine göre arayabilirsiniz.

Arama sonuçlarında çalışmak istediğiniz bir kuruma ortaklık isteği gönderebilirsiniz.

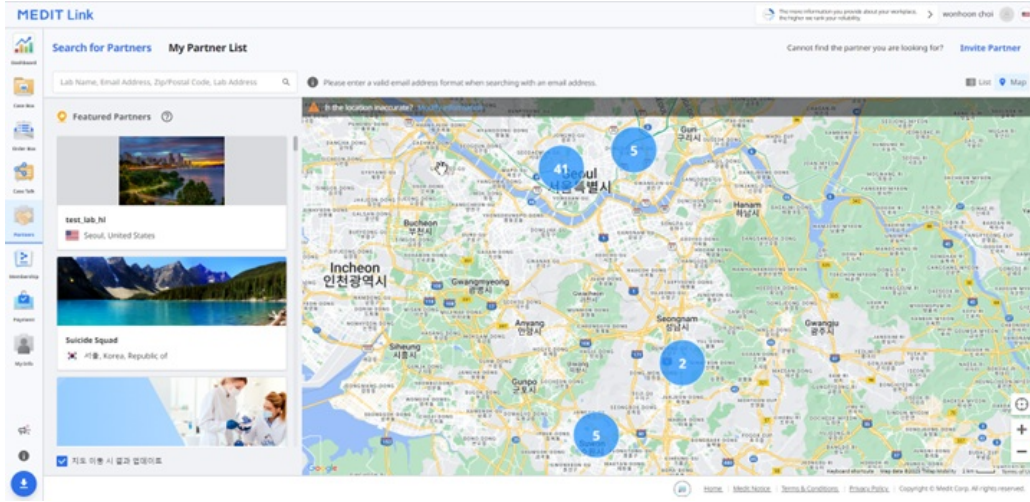


Ortaklarımızın Listesi

Mevcut tüm ortaklıklarınızı ve sözleşmelerinizi Ortaklarımızın Listesi'de inceleyebilirsiniz.

Bir sözleşmenin ortaklıktan farkı nedir?

Bir işletmeyle ortaklık kurduğunuzda, o kuruluşla sözleşme yapma talebinde bulunabilirsiniz.

- Ortağınız sözleşme talebinizi kabul ederse, verilen siparişlerin ödemesine devam edebilirsiniz.

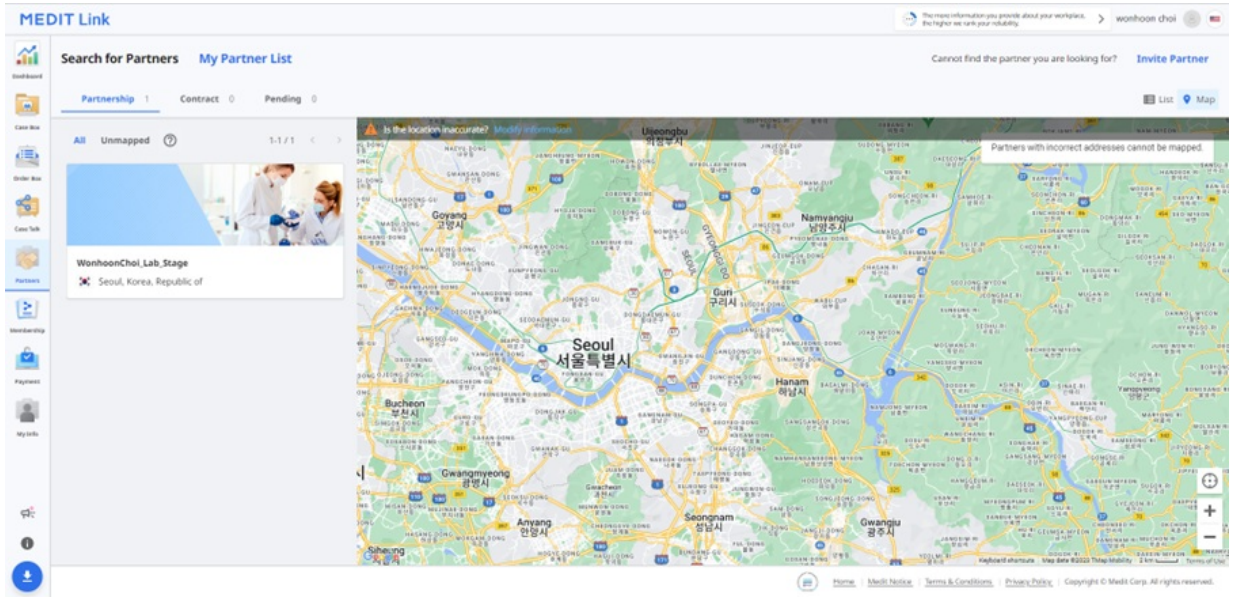

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Sözleşme

Ortak Daveti

Birlikte çalışmak istediğiniz bir kurum varsa, onları Medit Link'e katılmaya davet edebilirsiniz. Daveti kabul ettiklerinde ortaklık otomatik olarak kurulacaktır.

1. Ekranınızın sol üst kısmındaki "Ortağı Davet Et" seçeneğine tıklayın.
2. Çalışmak istediğiniz satıcının e-posta adresini girin ve ona ortaklık isteği içeren bir davetiye gönderin.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

CancelSend Invitation

3. Davet edilen kurum daveti kabul edip Medit Link'e kaydolduktan sonra ortaklık otomatik olarak kurulacaktır.

Üyelik

Medit Link'in üyelik politikası, cloud platformuna dayalı çeşitli hizmetler sunmak için giderek genişleyen daha kapsamlı bir dijital ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yeni üyelik politikamız ile müşterilerimize daha tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

İki üyelik planı mevcuttur:

Standart

- Oturum açmış tüm kullanıcılar için ücretsiz standart plan
- 1 GB cloud depolama
- Yeni kullanıcılar için

Premium

- Ücretli plan
- 10 TB cloud depolama
- Birçok vakaya ve çeşitli verilere sahip kullanıcılar için
- Bir aylık ücretsiz deneme

	Standart	Premium
Cloud Depolaması	1 GB	10 TB
Aylık Ücret	Ücretsiz	0.99\$/ay
* Cloud Storage, Ham Verilerin kapladığı alanı hesaplamaz.		


iNot

Üyelik planları Medit Link Çin'de mevcut olacaktır. Özelliğin resmi sürümüne kadar Premium planı ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Üyelik


Planım

Sol taraftaki bölümde, şu anda hangi üyelik planına sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Burada ayrıca üyelik abonelik durumunuzu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

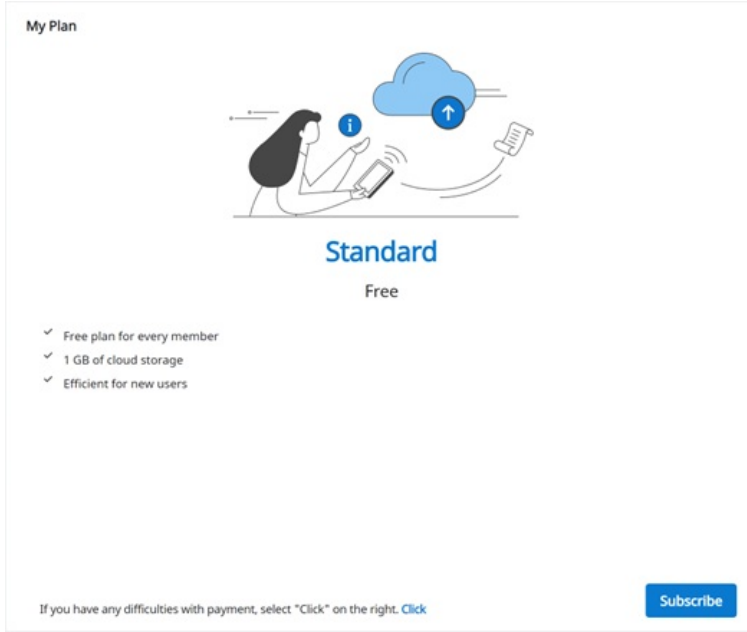

Cloud Depolaması

Sağ taraftaki bölümde, cloud depolama alanınızı yönetebilirsiniz.

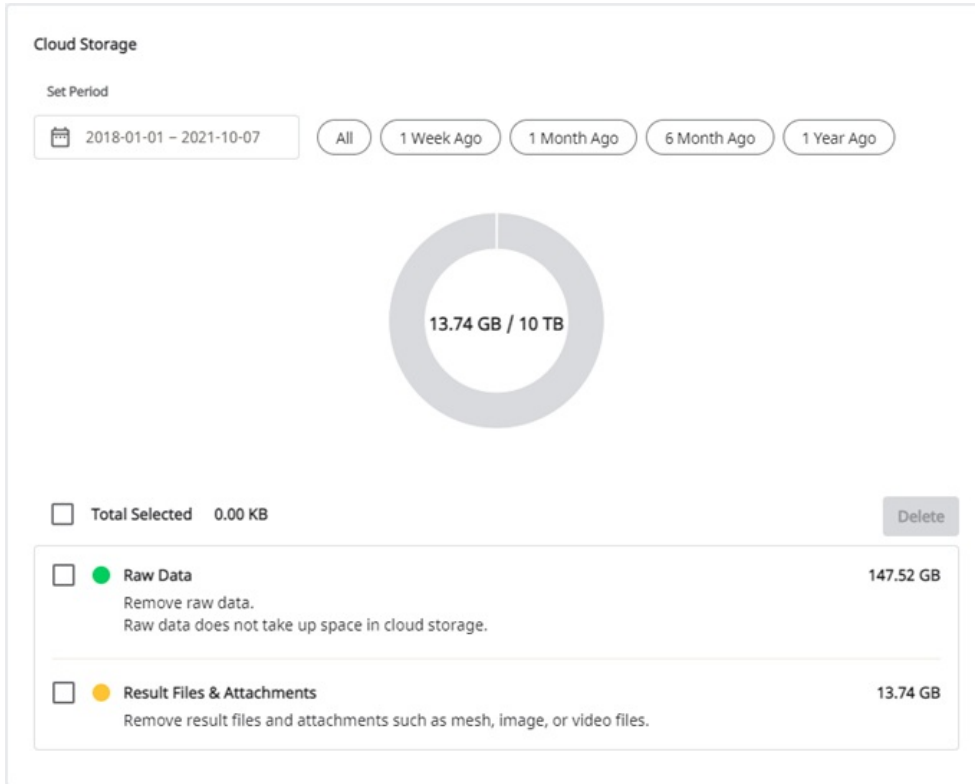

Periyodu Ayarla

Söz konusu zaman çerçevesinde oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin.

- Hepsi: Tüm dosyaları görün.
- 1 Hafta Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir hafta geçen dosyaları görün.
- 1 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir ay geçen dosyaları görün.
- 6 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden altı ay geçen dosyaları görün.
- 1 Yıl Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir yıl geçen dosyaları görün.


Ham Veri	Ham veriler cloud depolama alanının içinde yer almaz ve bu nedenle pi-grafikte olmayacaktır. Ancak gerekirse ham verileri buradan yönetebilirsiniz, örneğin hastanın özel bilgilerini korumak için silebilirsiniz, vb.
Sonuçlar & Ekler	Sonuç ve ek dosyaları cloud alanının içerisinde yer alır. Cloud doluysa, gereksiz dosyaları kaldırarak daha fazla depolama alanı sağlayabilirsiniz.
Sil	Alanı boşaltmak için seçilen dosyaları cloud depolama alanından kaldırın.

Abone Ol


Halihazırda Standart planda veya indirim koduyla Premium plandaysanız, Premium üyeliğe abone olabilirsiniz.

Ödeme, Stripe hizmeti (www.stripe.com) aracılığıyla tamamlanır.

1. "Abone Ol" butonuna tıklayın.

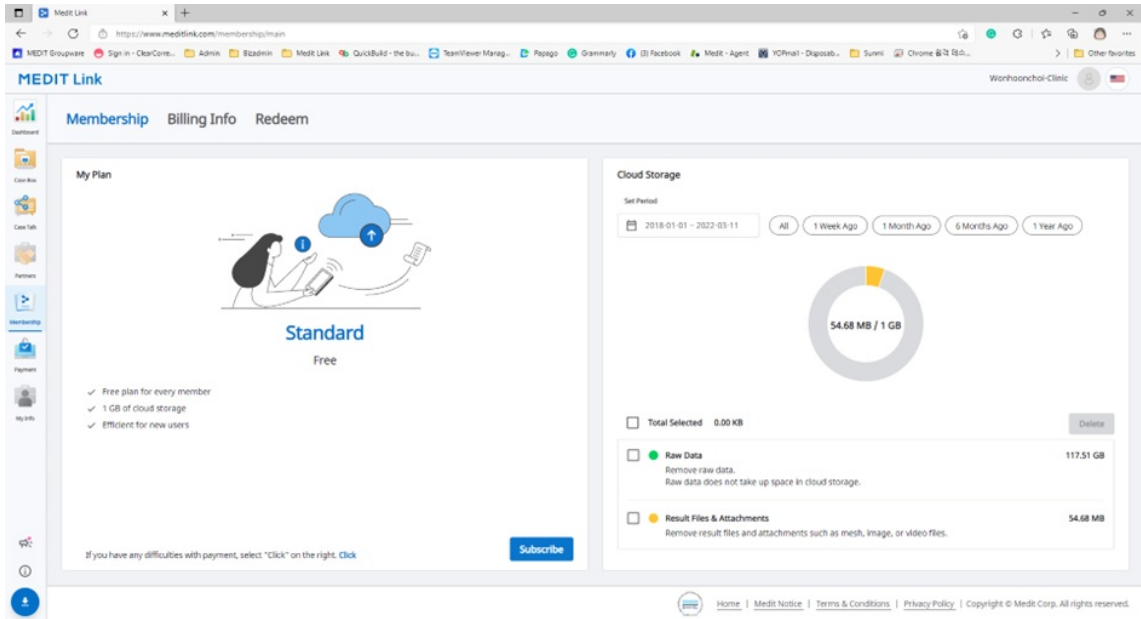

2. Premium plan açıklamasını kontrol edin ve tekrar "Abone Ol" düğmesini tıklayın.

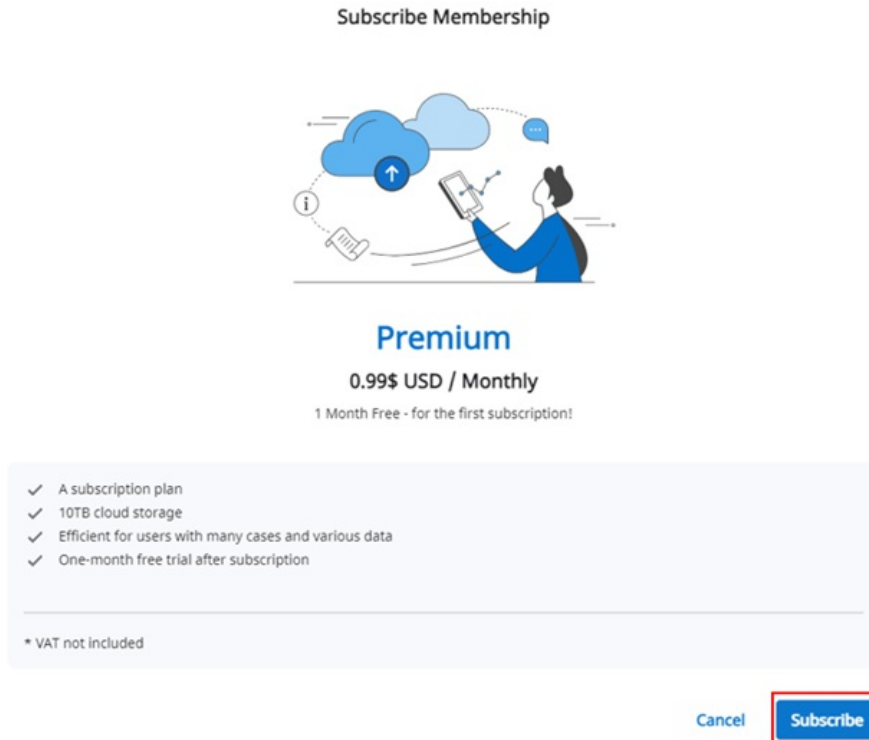

3. Fiyat ve koşulları kontrol edin ve ödeme için gerekli bilgileri girin. Ardından, "Abone Ol"u

tıklayın.

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic	\$0.99
Billed daily	
Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	
Total due today	\$0.00

Powered by stripe | Terms | Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Name on card

Country or region


South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.


4. Ödeme işlemi birkaç saniye sürecektir. Bittiğinde, onay mesajını göreceksiniz.

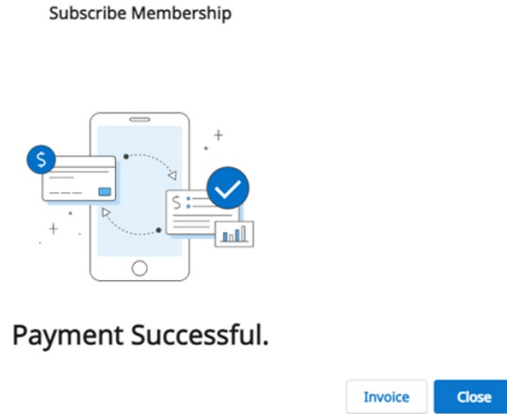


Abonelikten çık

Üyelikten istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Abonelikten çıktıktan sonra, o ücretli ayın kalan günleri için Premium üyeliği kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki ödeme gününden itibaren planınız Standart olarak değiştirilecek ve bulut depolama alanı 1 GB ile sınırlandırılacaktır. Cloud depolama kapasitesi aşılsa dosyalar yedeklenmeyecek, sipariş ve paylaşım fonksiyonları kullanılamayacaktır.

1. "Abonelikten Çık"ı tıklayın.

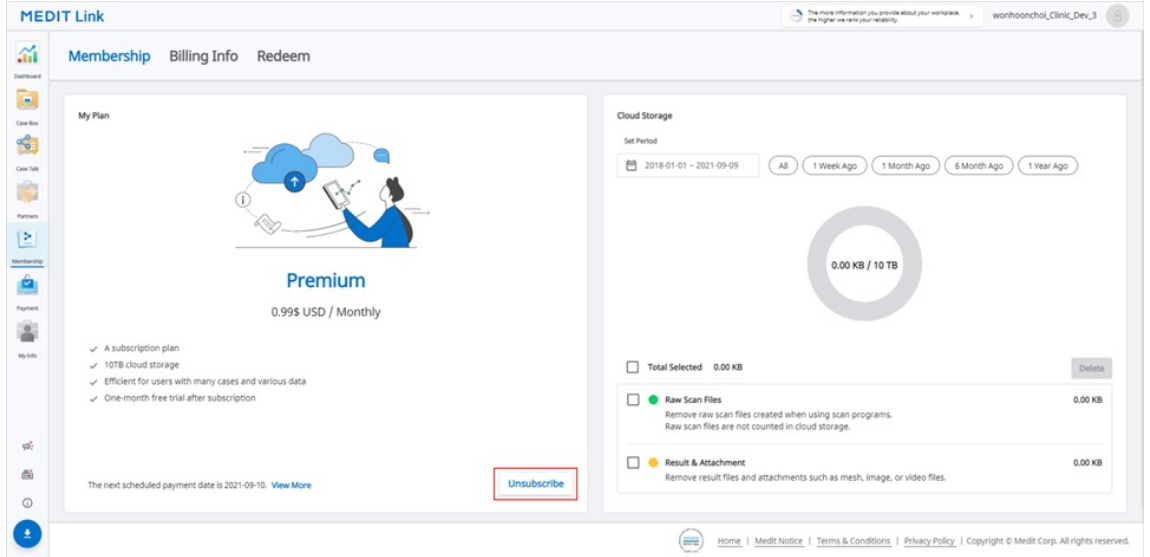

2. "Aboneliği İptal Et"i tıklayın.

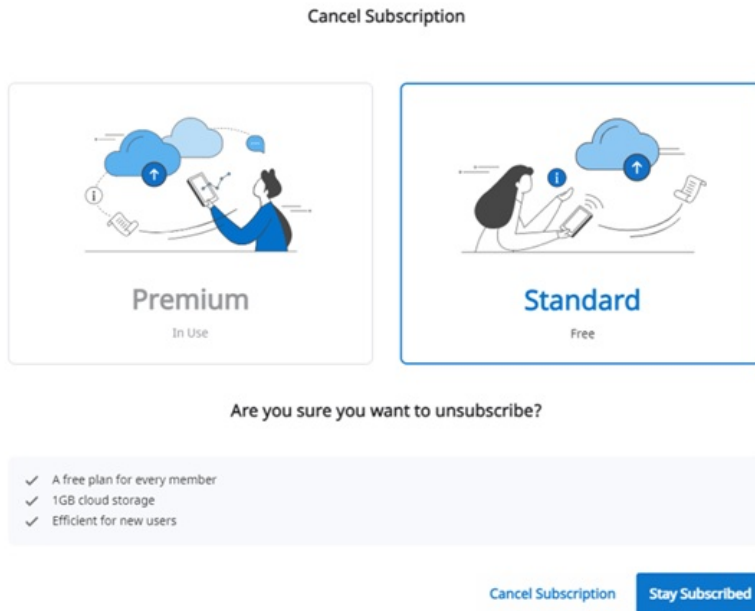

3. Abonelikten çıkmak istediğinizi onaylamak için, yeni açılır pencerede tekrar "Aboneliği İptal Et"i tıklayın.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. Aboneliğiniz iptal edildi.

5. Bir sonraki ödeme gününden itibaren planınız Standart olarak değiştirilecek ve bulut depolama alanı 1 GB ile sınırlandırılacaktır. Cloud depolama kapasitesi aşılsa dosyalar yedeklenmeyecek, sipariş ve paylaşım fonksiyonları kullanılamayacaktır.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

Fatura Bilgisi

Her ödeme için bir fatura da dahil olmak üzere üyelik aboneliklerinin ödeme geçmişini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, bir sonraki planlanmış ödemeden itibaren uygulanacak olan ödeme yöntemini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | [Medit Notice](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Ödeme yöntemi nasıl eklenir?

1. "Ödeme Yöntemini Düzenle"yi tıklayın.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

My Plan and Billing Information

Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Home | [Medit Notice](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy Policy](#) | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. "Ödeme Yöntemi Ekle"ye tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Gerekli bilgileri girin ve "Ekle" ye tıklayın.

Add payment method

Card information



Card number

MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. Yeni eklenen ödeme yöntemi varsayılan olarak ayarlanacak ve bir sonraki ödeme için kullanılacaktır.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?

1. Faturalandırma iletişim penceresinde değiştirmek istediğiniz ödeme yönteminin yanındaki genişletilmiş menü simgesini tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

 **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. Seçilen kartı varsayılan ödeme yöntemi olarak ayarlamak için "Varsayılan yap"ı tıklayın.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default

Expires 11/2021

X

VISA **** 4242

Expires 11/2021

...

+ Add payment method

Make default

Delete

BILLING INFORMATION

Kullanım Kodu

Promosyonun bir parçası olarak sağlanan kullanım kodunu kaydedin. Premium üyeliği kodla birlikte kullanabilirsiniz.

Kullanım Kodunu Kaydet

1. Kullanım kodunu girin ve "Kaydet"e tıklayın.

Dashboard

Case Box

Case Talk

Partners

Membership

Payment

My Info

Home

Medit Notice

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

The more information you provide about your workplace, the higher our safety with your eligibility.

wonhoonchol_Clinic_Dev_3

Membership

Billing Info

Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

2. Bildirimi okuyun ve açılır iletişim kutusunda "Kaydol" veya "Uygula"yı seçin.
 - **Kaydet:** Kullanım kodunu kaydedin. Kullanım kodunu daha sonra da etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.
 - **Uygula:** Kaydedin ve kullanım kodunu etkinleştirin. Promosyon indirimi hemen uygulanır.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Kullanım Kodunu Etkinleştir

Birden fazla kullanım kodu kaydedebilirsiniz, ancak kullanmak istediğinizi etkinleştirmeniz gerekir.

1. Kullanmak istediğiniz kodun yanındaki "Etkinleştir" düğmesine tıklayın.
"Aktif" durumda bir kod yoksa seçtiğiniz kod hemen uygulanacaktır. Halihazırda herhangi bir kod etkinleştirildiyse, durumu "Bekliyor" olarak değişecek ve onun yerine seçtiğiniz kod kullanılacaktır. Mevcut kullanma kodunun süresi dolduğunda, bekleyen kod otomatik olarak yeniden etkinleştirilecektir.
2. **Not**
"Bekliyor" durumunda sadece bir kod olabilir.

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Ödeme

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ödeme

Ödeme Detayları (Klinik & Lab hesapları)

Ödeme Detayı sayfasından ortaklarınız ile aranızdaki ödeme ve işlem geçmişini kontrol edebilirsiniz.

Ödeme Hesap Bilgileri (Yalnızca Lab Hesabı)

Payment Detail

Check the details of payment information here.

Total Number of Transactions : 0 Case

2020-08-12 ~ 2020-09-10

All Partners

Bu özellik, ortaklarınız tarafından ödeme almak üzere bilgi girmelerine izin vermek için yalnızca laboratuvar yöneticisi hesabı tarafından kullanılabilir.

- Ortaklarınızın çevrimiçi ödeme sistemi üzerinden sipariş verebilmesi için ödeme hesabı bilgilerinizi girmelisiniz.

iNot

Stripe'ın desteklendiği bir ülke seçerseniz, Stripe'a kaydolmak için bir düğmeye tıklayarak Stripe'a yönlendirileceksiniz.

Güney Kore'yi seçebilir, ardından ödeme almak için yerel bir banka hesap numarası girebilirsiniz ve KCP ödemeniz işleme koyulacaktır.

Bilgilerim

Hesabım

Burada kayıt sırasında verdiğiniz bilgileri inceleyebilir, düzenleyebilir ve üyelik durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) [▼](#)

Country
Korea, Republic of [▼](#)

1. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Kurumum (Yalnızca Yönetici Hesabı)

Burada kurumunuzla ilgili bilgileri inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu bölüm yalnızca yönetici tipi hesaplar için kullanılabilir.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[✔ Address Information](#) [✔ Organization Information](#) [○ Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.
1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code *
02835

City *
Seoul

Country *
Korea, Republic of [▼](#)

State/Province *
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone *
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)
+ 82 01026088546

Tarayıcı

Hesap için bağlı cihaz bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Fiyat Listem (Yalnızca Lab Yönetici Hesabı)

Laboratuvarınızın sunduğu ürünleri ve her bir ürün için fiyat bilgilerini girebilirsiniz.

My Account My Organization My Scanner My Price List

Teeth Arch AED (₺:₺)

All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (8/7) Diagnostic Wax-Up (8/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)

Name	Type	Method	Material	Price
☒ 인레이 지르코니아	Inlay	-	Zirconia	56.83
☒ 인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.83
☒ 인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.83
☒ 인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.83
☒ 인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.83
☒ 인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
☒ 인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
☒ 인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

İNot

- Bir iş ortağıyla sözleşme yaptığınızda, iş ortağınız ürünlerinizi bu ürün listesi ve fiyatına göre sipariş edebilir.
- Yalnızca partnerinizle bir ortaklığınız varsa, Medit Link fiyat bilgisi gerektiren siparişleri desteklemez.

Diğer Menü

Bildirimler & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit Bilgi

Medit Link kullanımı hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Medit Academy, Medit Academy YouTube ve Medit Yardım Merkezi gibi Medit'in eğitim ve bilgi kaynaklarına erişin.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Medit Link App'i indirin

Program yükleyicinin en son sürümünü web'den indirebilirsiniz. Bu menü, ürün paketinde sağlanan yükleyiciyi kaybettiğinizde veya eski bir yükleyiciye sahip olduğunuzda yardımcı olur.

iNot

Medit Link, internet bağlantınız olduğunda otomatik olarak güncellenir.

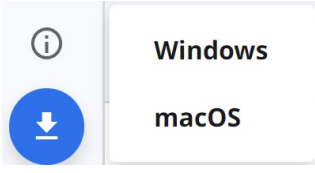

Genel Bakış

MEDIT Link 3.0.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Total Count: 514

2018-01-01 - 2022-09-29 | All | All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 시뮬한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

1	Başlık Çubuğu	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Başlık Çubuğu 'na bakın.
2	Menü	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Menü 'ye bakın.
3	Araçlar ve İşlevler	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Dosya Görüntüleyici ve Medit Link App > Görüntüleme Seçenekleri 'ne bakın.
4	Vaka Listesi	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Filtreleme ve Arama 'ya bakın.

Box'lara Genel Bakış

İş Akışı		Klinik Hesabı	Lab Hesabı
1. Adım	Vakalar Oluşturma	Case Box: Vakalar oluşturun ve çeşitli filtreleme ve arama seçenekleriyle vakaları kolayca arayın ve görüntüleyin. Oluşturulan vaka ile tarama programlarına ve CAD programlarına doğrudan bağlanarak üzerlerinde çalışabilirsiniz.	
2. Adım	Vakaları Sipariş Etme/Yönetme	Order Box: Sipariş edilen vakaları yönetin. Vakaların sipariş edilmesinden tamamlanmasına kadar olan süreci yönetmek için işlevler sağlar.	In Box: Alınan sipariş vakalarını yönetin. Vakaları kabul etme, reddetme, gönderme ve tamamlama sürecini yönetme işlevleri sağlar.
3. Adım	Tarama/CAD üzerinde çalışma		Work Box: In Box'tan iletilen veya sizin oluşturduğunuz servis taleplerini yönetin. Üzerinde çalışmak için tarama programları ve CAD programları ile doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

4. Adım	Vakaları Paylaşma	Case Talk: Oluşturulan vakaları kısıtlamalarla, kısıtlamalar olmadan, belirli kişilerle veya Medit Link'in diğer kayıtlı üyeleriyle paylaşın.
5. Adım	Ek veya ek iş	App Box: Dijital diş hekimliği iş akışınızı tamamlayan çeşitli uygulamalardan yararlanın. Medit veya üçüncü taraf uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz.
6. Adım	Vakaları Silme/Geri Yükleme	Trash Box: Vakaları Trash Box'da görüntüleyin, geri yükleyin veya kalıcı olarak silin.

Aşağıdaki tablo, her bir klinik ve laboratuvar hesabı türünde hangi Boxların kullanılabileceğini özetlemektedir.

Hesap Türü		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Klinik Hesabı	Admin	O	O	X	X	O	O	O
	Üye	O	X	X	X	O	O * Yalnızca geri yükleme özelliği	O
Lab Hesabı	Admin	X	X	O	O	O	O	O
	Üye	X	X	X	O	O	O * Yalnızca geri yükleme özelliği	O

Başlık Çubuğu

Başlık çubuğu, ağ durumu, cloud senkronizasyonu ve bildirimler gibi özelliklere hızlı erişim sağlar.

Windows	MEDIT Link 3.0.0	Wonhoon Choi_clinic	🔔	🔄	📶	—	🔍	✕
macOS	Medit Link 3.0.0	Wonhoon Choi_clinic	🔔	🔄	📶	—	🔍	✕

Bilgilerim

Bilgilerim; profil resmi, kuruluş adı, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi temel kullanıcı bilgilerini içerir.

Ayrıca bir çıkış seçeneği ve Medit Link Web'deki Hesabım sayfasına kısayol sağlar.

My Information

1



2 Organization Name

Wonhoonchoi_Clinic_Dev

Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Name

Wonhoonchoi_Clinic

3 Close

4 Log Out

Edit >

1	Profil resmini gösterir.
2	Kurum adını, e-posta adresini ve kullanıcı adını gösterir.
3	Mevcut hesaptan çıkış yapın.
4	Mevcut hesapla oturum açmışken Medit Link Web'e gidin. Kaydolduğunuzda girdiğiniz hesap bilgilerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Bildirimler

Sözleşmeler, siparişler ve iş süreçleriyle ilgili bildirimleri görebilirsiniz.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order
Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work
Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Yalnızca okunmamış mesajları göstermek için kutuyu işaretleyin. |
| 2 | İlgili vakaya veya web sayfasına anında geçmek için herhangi bir bildirimle tıklayın. |

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi, Medit Link'te vakaları yüklemenize ve indirmenize yardımcı olur. Ayrıca birden çok vakayı clouda yükleyebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

Total Count: 240

Cancel All
Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case111111111111111111111112131231231312333111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Yükle

Toplam Vaka / Seçilen Vakalar	Tüm/yüklenmesi gereken seçilen vakaların sayısını kontrol edin.
Tümünü Yükle	Tüm vakaları clouda yükleyin.
Hepsini İptal Et	Tüm yükleme isteklerini iptal edin.
	Vakayı clouda yükleyin.
	Vakanın yüklemesini iptal edin.
	Vakayı yüklemeyi tekrar deneyin.

Indir

Toplam Vaka / Seçilen Vakalar	Tüm/indirilmesi gereken seçilen vakaların sayısını kontrol edin.
-------------------------------	--

Hepsini İndir	Tüm vakaları bilgisayarınıza indirin.
Hepsini İptal Et	Tüm yükleme isteklerini iptal edin.
	Vakayı PC'ye indirin.
	Vakanın indirilmesini iptal edin.
	Vakayı indirmeyi yeniden deneyin.

Ağ Durumu

Medit Link, bir ağa bağlandığınızda tüm özellikleri sorunsuzca kullanmanızı sağlar.

Ağ bağlantınızın durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etmenize yardımcı olmak için, başlık çubuğunda ağ durumu simgesi görüntülenir.

Ağ bağlantısı iyi değilse, aşağıdaki kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz:

- Vaka siparişi verme, vaka oluşturma, Case Talk aracılığıyla paylaşma ve cloud senkronizasyonu gibi bazı işlevler kısıtlanacaktır.
- Ağ ortamının etkisi nedeniyle hizmetin genel performansı azaltılabilir.

Bu durumda, temel görevleri gerçekleştirmek için Çevrimdışı Mod'a girebilir ve ardından bir ağa bağlandığınızda internet gerektiren özellikleri kullanabilirsiniz.

İNot


Ağ sembolü, geçerli alan ile AWS (Amazon Web Hizmeti) arasındaki yanıt hızını gösterir. Bu, ağ hızınız anlamına gelmez, bu nedenle bazen ağ hızınız yeterince hızlı olsa bile durumu zayıf veya kötü olarak gösterebilir.

Diğer işlem aynı ağı kullanıyorsa, hız zayıf veya kötü olarak gösterilebilir ve Medit Link'in genel performansı kötü olabilir. Bu durumda lütfen ağı diğer işlemlerle paylaşmayın. Örneğin, "Ham Verileri Yükle" özelliği, ağ sürecinin çok büyük bir parçasıdır. Sembol zayıf veya kötü durumu gösteriyorsa, Ayarlar > Ham Verileri Yükle'ye gidin ve "Otomatik Olarak Yükle"yi kapatın.

Menü

Dashborad


Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

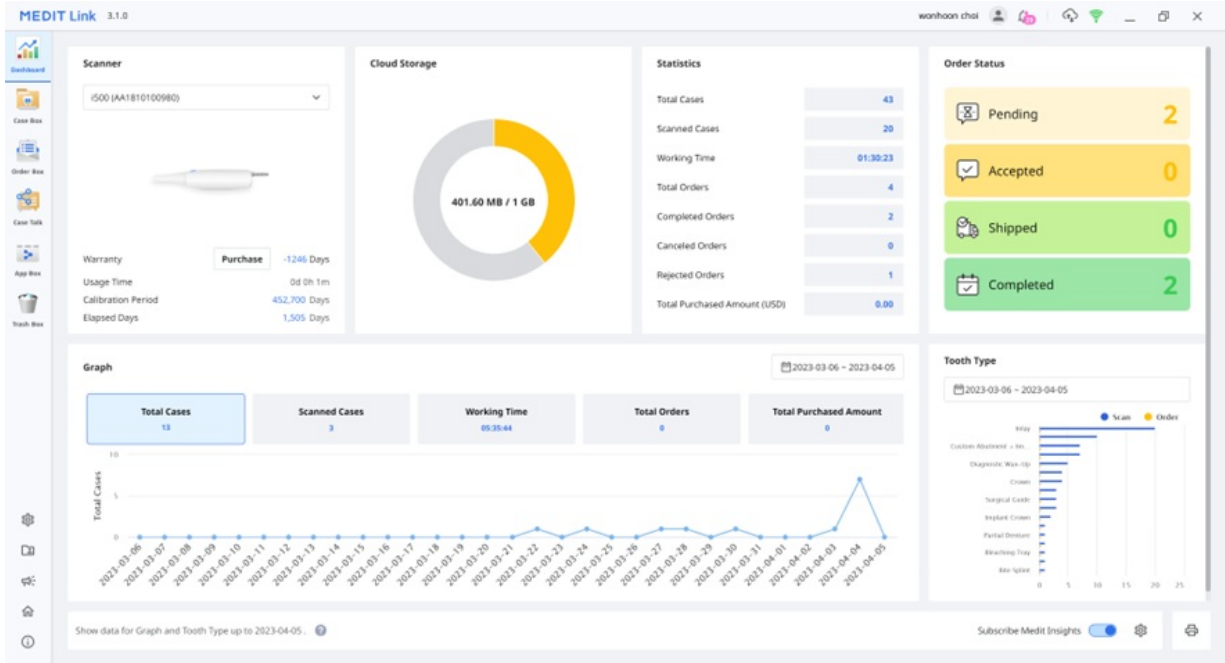

INote

Dashboard ve Medit Insights hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Medit Link Web > Dashboard'a](#) bakın.

Case Box/Work Box

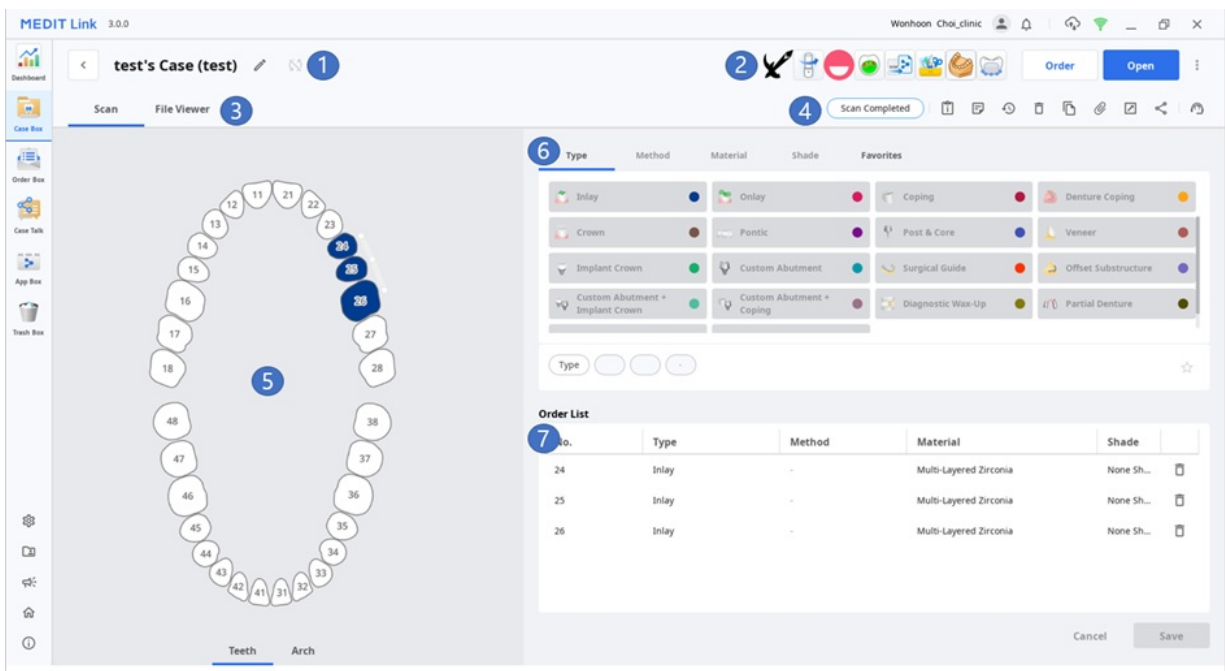

1	Vaka adını ve hasta adını gösterir.
2	Mevcut temel özellikleri sağlar: Sipariş/Tara(Aç)/Sipariş düğmeleri ve Uygulama simgeleri.
3	Kullanılabilir sekmeleri görüntüleyin: Form, CAD ve Dosya Görüntüleyici.
4	Vakaları ve dosyaları yönetmek için işlevleri gösterir.
5	Seçilen CAD programı için form kaydı kullanıcı arayüzünü gösterir.
6	Kullanıcıların seçilen dış numarası için seçmeleri için tür/yöntem/materyal/ton bilgisi sağlar.
7	Seçili dışlara uygulanan tür/yöntem/malzeme/ton bilgilerini görüntüleyin.

Case Box/Work Box'daki Sekmeler

Form	CAD	Dosya Görüntüleyici
Form sekmesi, tür, yöntem, dış numaraları için materyal ve tarama seçenekleri gibi tarama işi için temel bilgileri girmek için bir kullanıcı arayüzü sağlar. Girdiğiniz bilgiler, bağlı tarama programına iletilir ve iş ortağınızla sipariş verirken sipariş bilgileri olarak kullanılır.	CAD sekmesi, CAD seçeneklerini ayarlamak için bir kullanıcı arayüzü sağlar. Ayarladığınız bilgiler bağlı CAD programına iletilir.	Tarama programları ve CAD tarafından oluşturulan sonuç dosyalarını görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.


Case Box/Work Box'daki İşlevler

Case Box/Work Box'da aşağıdaki işlevler mevcuttur.

	Vaka Durumu	Vakanın durumunu gösterir.
	Detaya Git	Başka bir boxta aynı vaka için kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Vaka Bilgileri	Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.
	Not & Etiketler	Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.
	Vaka Geçmişi	Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	Sil	Vakayı silin. Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

	Kopyala	Case Box'ta mevcut vakanın bir kopyasını oluşturun. Tüm veriler klonlanan vakaya kopyalanacaktır. Bu özellik, aynı hasta için tedavi bilgilerinin çoğaltılmasına veya aynı bilgi veya dosyalarla ek bir sipariş yapılmasına yardımcı olur.
	Ekle	Dosyaları çeşitli biçimlerde ekleyin.
	Dışa Aktar	Tarama veya CAD sonuç dosyalarını yerel PC'ye aktarın. Dosyaları dışa aktarırken tercih ettiğiniz dosya biçimini seçebilirsiniz. Dışa aktarılan dosyalar, CAD ve CAM yazılımında daha fazla çalışmak için kullanılabilir.
	Paylaş	Paylaşmak için bir bağlantı oluşturun. Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir. Bağlantıyı herhangi biriyle veya yalnızca belirli kişilerle ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Özel bilgilerin güvenliğini sağlamak için bir PIN kodu veya bağlantı son kullanma tarihi ayarlanabilir.
	Destek Talebi Gönder	Bir destek talebi göndermek için bir Medit Yardım Merkezi sayfasına gidin.

Order Box/In Box

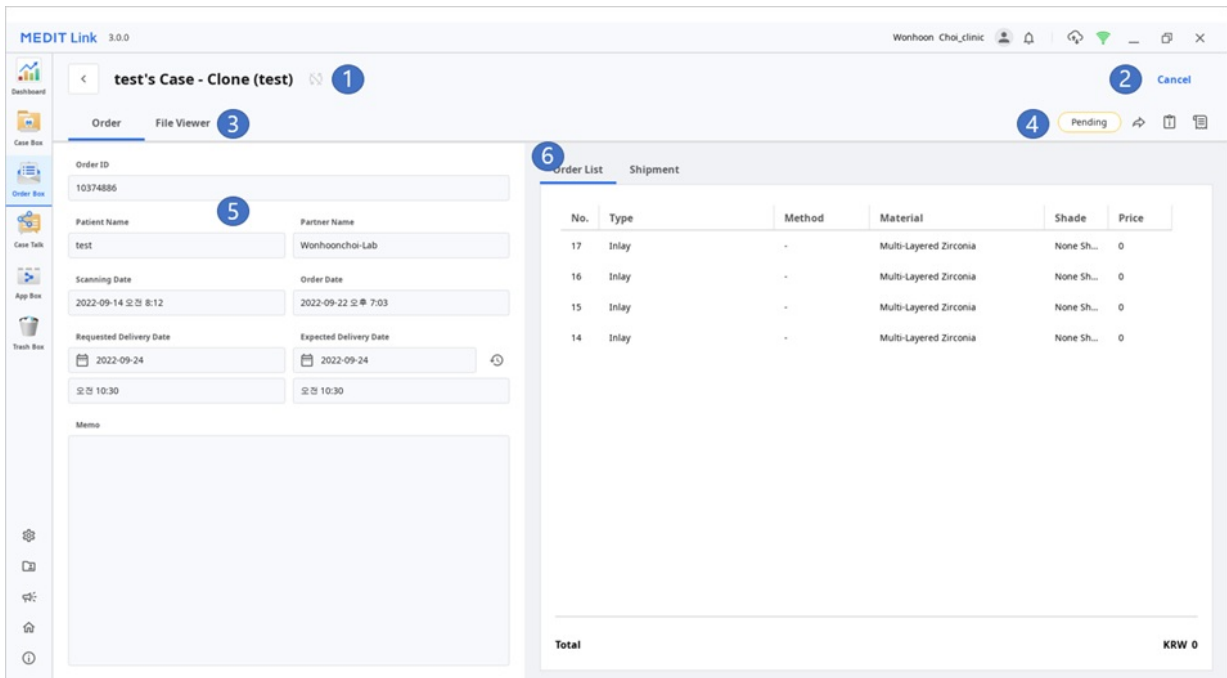

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The top bar displays the user name 'Wonhoon Choi_clinic'. The sidebar on the left contains icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main content area is titled 'test's Case - Clone (test)' and includes a 'Cancel' button. The 'Order Box' section is active, showing a form with fields for Order ID (10374886), Patient Name (test), Partner Name (Wonhoonchoi-Lab), Scanning Date (2022-09-14 오전 8:12), Order Date (2022-09-22 오후 7:03), Requested Delivery Date (2022-09-24 오전 10:30), and Expected Delivery Date (2022-09-24 오전 10:30). A 'Memo' field is also present. The 'Order List' table shows four rows of data:

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
17	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
16	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

The total price is KRW 0.

1	Vaka adını ve hasta adını gösterir.
2	Sipariş yönetimi için işlevler sağlar (kabul etme/iptal etme; teslim etme/alma).
3	Mevcut sekmeleri gösterir: Sipariş, Dosya Görüntüleyici
4	Vakaları ve dosyaları yönetmeye yönelik işlevleri gösterir: Vaka durumu, ayrıntılı bilgi için kısayollar, vaka bilgisi, not & etiketler vb.
5	Sipariş numarası, hasta adı, ortak adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve not & etiketler dahil olmak üzere siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
6	Sipariş edilen ürün bilgilerini ve teslimat durumunu gösterir.

Order Box/In Box'daki Sekmeler

Sipariş	Dosya Görüntüleyici
Sipariş numarası, hasta adı, hesap adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi, not ve etiketler gibi siparişle ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol edin.	Tarama/CAD işlemleri tarafından oluşturulan dosyaları görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar, belirttiğiniz belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üyeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki Case Talk aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.

iNot

Case Talk hizmeti internet bağlantısı gerektirir.

MEDIT Link 3.0.0
Wonhoon Choi_clinic

Case Talk

2018-01-01 ~ 2022-09-29

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanning Date	Shared Date ↓	Expiration Date
test's Case-262 - Clone_2022-08-05 18:00:05	test	14, 15, 16, 17	2022-07-28 08:27	2022-08-05 18:00	2022-11-03 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:09	2022-10-23 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:02	2022-10-23 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:58:18	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:58	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:57:54	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:57	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:56:47	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:56	2022-10-19 23:59
test1's Case_2022-07-14 14:45:16	test1	Maxilla	2022-07-06 10:36	2022-07-14 14:45	2022-10-12 23:59


Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.

App Box

App Box, temel tarama iş akışınızı tamamlayan ve üretkenliği artıran çeşitli eklenti programları sağlar.

Medit Apps, Medit tarafından geliştirilmiş orijinal yazılımları ve 3D baskı, diğer CAD/CAM yazılımları vb. gibi dijital diş hekimliğinin farklı sektörlerinden ortaklarımızla entegrasyon uygulamalarını içerir.

Dental cihazlar oluşturmak, tarama verilerini analiz etmek, bir konsültasyon sırasında size yardımcı olmak veya iş sürecinizi kolaylaştırmak için Medit Apps ve Partners Uygulamasından mevcut uygulamaları indirin.

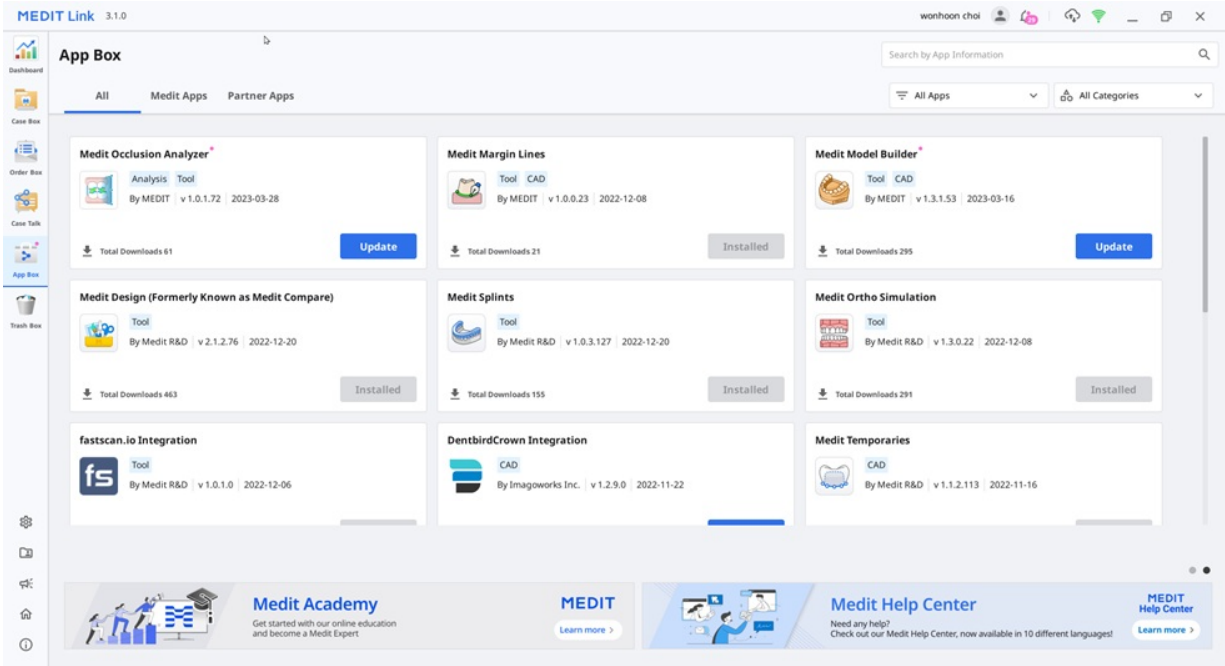

Trash Box

Trash Box, silinen vakaları geçici olarak depolar. Trash Box'daki herhangi bir vaka geri yüklenebilir veya kalıcı olarak silinebilir.

⚠ Dikkat

Trash Box'dan silinen veriler, bilgisayarınızdan ve sunucudan kalıcı olarak silinir ve kurtarılamaz.

MEDIT Link 3.0.0							
Trash Box							
☐	Restore	Delete	Total Count: 30		All / Contains		
Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB	
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB	
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB	

Ayarlar

Ayarlar penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen [Medit Link Uygulaması > Ayarlar](#)'a bakın.

Hasta Yönetimi

Hasta Yönetimi penceresinde hasta ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir veya birleştirebilirsiniz.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试记录				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Yeni Hasta Ekle

1. "Yeni Hasta"ya tıklayın.

New Patient

Patient Name*

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

2. Yeni Hasta iletişim kutusunda gerekli bilgileri doldurun ve ardından "Kaydet"i tıklayın.

Hastayı Sil

iNot

Bir hastayı yalnızca hasta için vaka olmadığında silebilirsiniz.

1. Listedenden silinecek hastayı seçin.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I.Abument2				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarbody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abument Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	suljadholf				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. "Sil"i tıklayın.

Hastaları Birleştir

Birden çok hastanın tüm vakalarını tek bir hastada birleştirebilirsiniz.

1. Birleştirmek istediğiniz hastaları listeden seçin.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9 /Scan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-25	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Medit Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	SCX-111111				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test21231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. "Hastaları Birleştir"i tıklayın.

3. Tüm vakaları birleştirmek istediğiniz hedef hastayı seçin.

4. Tüm vakalar hedef hastada birleştirilir ve hedef hastanın hasta bilgileri korunur.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#) [Apply](#)

5. Birleştirmeye devam etmek için “Uygula”ya tıklayın.

Bildirimler & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Medit Link Web'e Gidin

Şu anda oturum açmış olduğunuz hesabın altındaki Medit Link Web'e gideceksiniz.

Medit Bilgi

Medit Link kullanımı hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Medit Academy, Medit Academy YouTube ve Medit Yardım Merkezi gibi Medit'in eğitim ve bilgi kaynaklarına erişin.

Need more help?

×

 [Medit Academy](#) >


 [YouTube](#) >

 [Help Center](#) >

Ayarlar

Genel

Genel sistem kurulumu için seçenekler sunar.

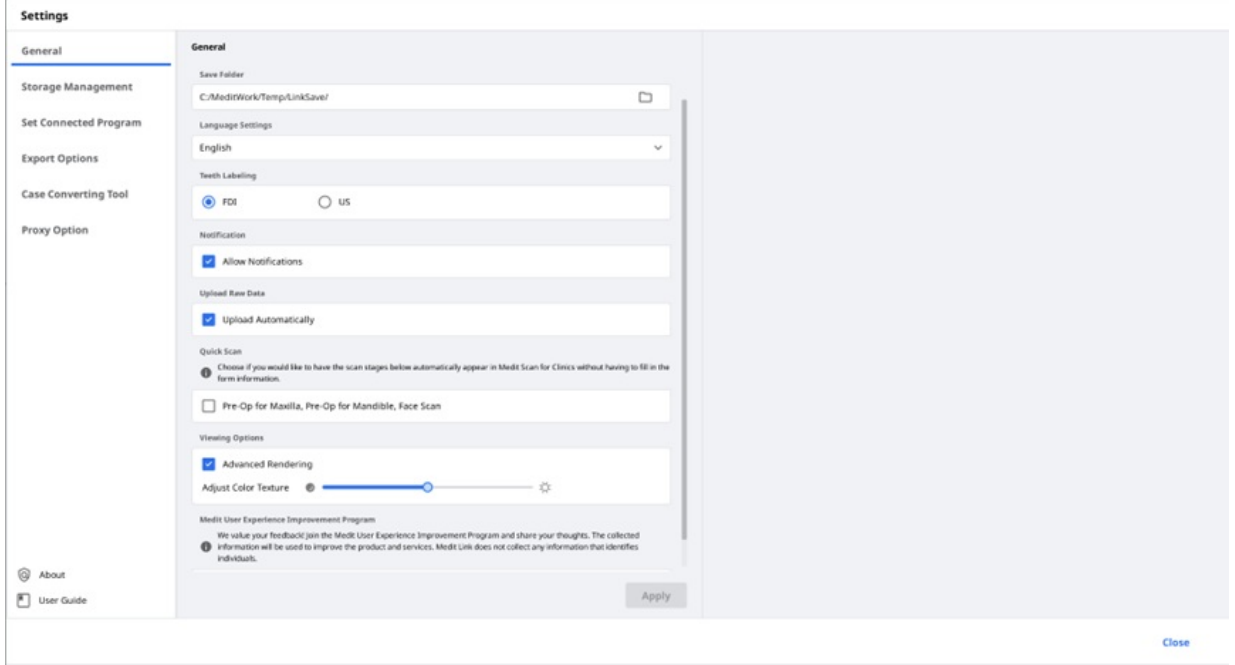

Kaydedilecek Klasör	Medit Link ve bağlı programlarda oluşturulan veri sonuçlarını depolamak için bir klasör belirtin.	
Dil Ayarları	Program için dili seçin.	
Diş Etiketleme	FDI ile US arasında bir diş etiketleme sistemi seçin.	
Bildirimler	İşaretlendiğinde, program güncellemeleri için bildirim alacaksınız.	
Ham Verileri Yükle	İşaretlendiğinde, ham veriler otomatik olarak clouda yüklenir. Medit Link'i başka bir bilgisayarda aynı hesapla kullanırken orijinal verilerin yedeklenmesine ve sorunsuz tarama yapılmasına yardımcı olur. Orijinal veriler için cloud yedeklemesi yalnızca Medit Scan for Clinics'te alınan veriler için geçerlidir.	
Hızlı Tarama	Medit Scan for Clinics'te aşağıdaki tarama aşamalarının form bilgilerini doldurmanıza gerek kalmadan otomatik olarak görünmesini isteyip istemediğinizi seçin. • Maksilla için Pre-Op • Mandibula için Pre-Op • Yüz Taraması	
Görüntüleme Seçenekleri	Gelişmiş Görüntü	İşaretlendiğinde, 3D model daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görüntülenir.
	Renk Dokusunu Ayarla	3D modelin parlaklığını ayarlar. * Aynı verileri başka bir yazılımla açtığınızda ortaya çıkan renkler Medit Link'ten biraz farklı olabilir.


Medit Kullanıcı Deneyimi Geliştirme Programı

Medit Kullanıcı Deneyimi Geliştirme Programı'na katılın.

- Toplanan bilgileri ürün ve hizmetimizi geliştirmek için kullanıyoruz.
- Kişileri tanımlayan herhangi bir bilgi toplamıyoruz.

Depolama Yönetimi

Yerel ve cloud depolama alanını kontrol edin ve yönetin.

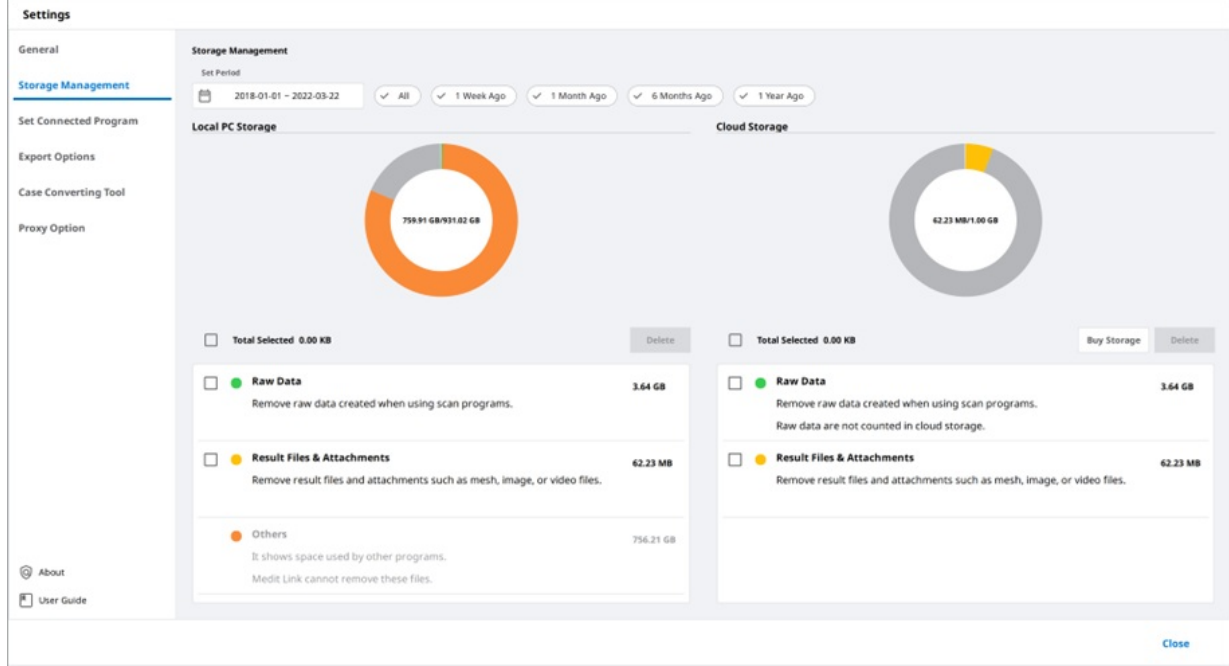

Periyodu Ayarla

Aşağıda belirtilen zaman aralıklarında oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin.

- Hepsini: Tüm dosyaları görün.
- 1 Hafta Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir hafta geçen dosyaları görün.
- 1 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir ay geçen dosyaları görün.
- 6 Ay Önce: Oluşturulmasının üzerinden altı ay geçen dosyaları görün.
- 1 Yıl Önce: Oluşturulmasının üzerinden bir yıl geçen dosyaları görün.

Yerel Depolama

PC depolama alanını yönetin.

Ham Veri	Seçili ham verileri PC'den kaldırın. Ham veriler zaten clouda yüklendiyse, istediğiniz zaman indirip kullanabilirsiniz.
Sonuçlar & Ekler	Mesh, görseller ve videolar gibi sonuç ve ek dosyalarını bilgisayardan kaldırın. Bu dosyalar zaten clouda yüklenmişse, istediğiniz zaman indirebilir ve kullanabilirsiniz.
Diğerleri	Sistemi ve diğer programları çalıştırmak için kullanılan dosyalara bakın. PC'nizin depolama alanını gösterir. Bu dosyaları Medit Link'ten kaldıramazsınız.
Sil	Seçili dosyaları bilgisayardan kaldırın.

Cloud Depolaması

Cloud depolama alanını yönetin.

Ham Veri	Ham veriler cloud depolama alanının içinde yer almaz ve bu nedenle pi-grafikte olmayacaktır. Ancak gerekirse ham verileri buradan yönetebilirsiniz, örneğin hastanın özel bilgilerini korumak için silebilirsiniz, vb.
Sonuçlar & Ekler	Sonuç ve ek dosyaları cloud depolama alanının içerisinde yer alır. Cloud doluysa, gereksiz dosyaları kaldırarak daha fazla depolama alanı sağlayabilirsiniz.
Depolama Alanı Satın Al	Standart plandaysanız, cloud depolama alanınızı genişletmek için Premium'a abone olun.
Sil	Alanı boşaltmak için seçilen dosyaları cloud depolama alanından kaldırın.

Bağlı Programı Ayarla

Medit Link'te entegrasyonu destekleyen programları yönetin.

Aşağıdaki programları bağlayabilirsiniz:

	Klinik Hesabı	Lab Hesabı
Tarama Programı	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CAD Programı	exocad	exocad

İNot

Aşağıdaki hizmetlerin entegrasyonu Medit Link for Mac için mevcut değildir.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Dışa Aktarma Seçenekleri

Dosyaların Medit Link'ten nasıl dışa aktarılacağını ayarlayın.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

CAD Type

Maestro

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ medtMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Name

Rule for File Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Name

Apply

Close

CAD Türü	Tasarım için kullanmak istediğiniz CAD programını seçin. Program, seçiminize göre sonuçları ayarlayacak ve herhangi bir ek eksen hizalaması olmadan tasarıma devam etmenizi sağlayacaktır.
Dosyaları Şuraya Aktar	Sonuçları saklamak istediğiniz yolu belirtin.
Mesh Formatı	Nihai mesh dosyasının formatını belirtin.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Sıkıştır & Birleştir	Dosyaları Sıkıştır: Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırır. Bireysel Mesh Birleştirme: Maksilla veya mandibula için tüm sonuçları tek bir dosyada birleştirin. Birden çok dosyayı içe aktaramayan ve bunlarla çalışamayan bazı programları kullanırken, bu programlarda çalışmak için bunları birleştirebilirsiniz.
Aynı klasör veya dosyanın mevcut olduğu durumda sunulan seçenekler.	Hedef yolda aynı klasör veya dosya adının bulunduğu durumlar için varsayılan eylemi seçin. - Dışa aktarırken her zaman sor. - Yeni dosyayı dışa aktarın ve mevcut dosyaların üzerine yazın. Halihazırda saklanan dosya kaybolacaktır. - Bir klasör oluşturun ve dosyaları dışa aktarın

Klasör Adı Kuralı	Dosyaları dışa aktarırken bir klasör adı oluşturmak için kurallar tanımlayın. Belirlenen kurallar, klasör adlandırmaya uygulanacak ve dışa aktarılan dosya, oluşturulan klasöre kaydedilecektir. Kural oluşturmak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. - Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID - Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID
Dosya Adı Kuralı	Dışa aktarılan dosya adı için kurallar tanımlayın. Aşağıdaki bilgiler kuralı ayarlamak için kullanılabilir. - Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID - Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID

Vaka Dönüştürme Aracı

Vakaları farklı hesaplar arasında taşıyın.

The screenshot displays the 'Case Converting Tool' interface. On the left is a sidebar with 'Settings' and 'Case Converting Tool' (highlighted). The main area is divided into 'Export' and 'Import' sections.

Export Section:

- Buttons: '2020-09-13 - 2020-09-20', 'All', 'Search / Contains'.
- Table 'Files to Export':

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오후 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 1111111111	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Teet...	2020-09-18 오후 10:19

File Name: CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export button.

Import Section:


- Text: 'A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.'
- Import from: C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/
- Import button.
- File List table:

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditec	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditec	2020-09-18 오전 8:55


Close button at the bottom right.

Vaka Dönüştürme Aracı Nasıl Kullanılır?


1. Medit Link'i açın ve "Ayarlar"a tıklayın.

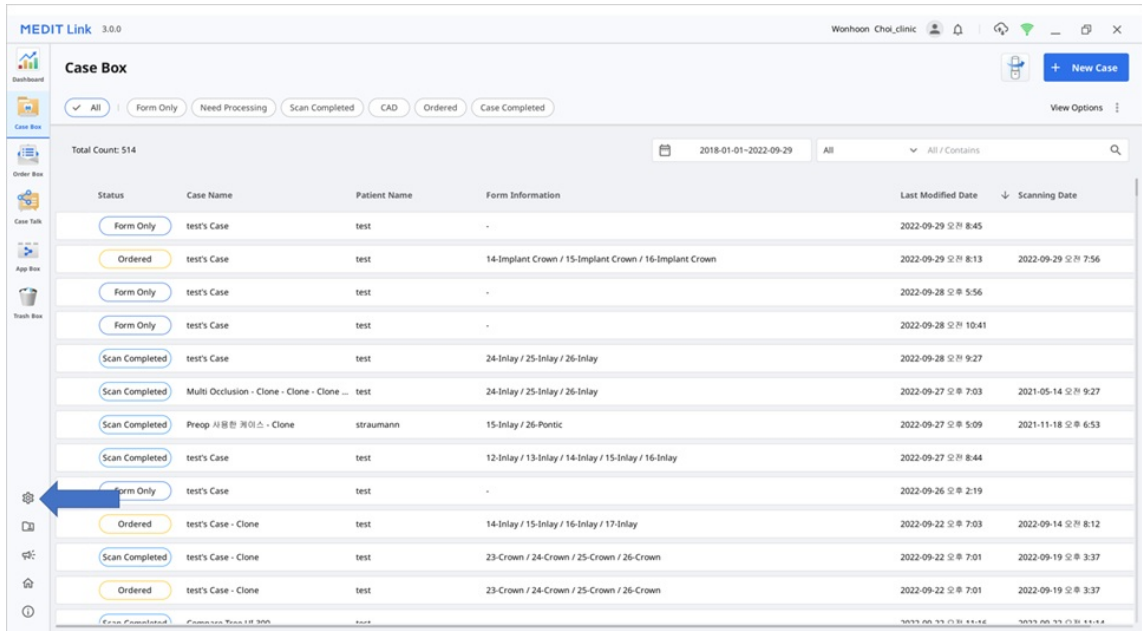

2. Sol taraftaki menüden "Vaka Dönüştürme Aracı" bölümünü seçin.

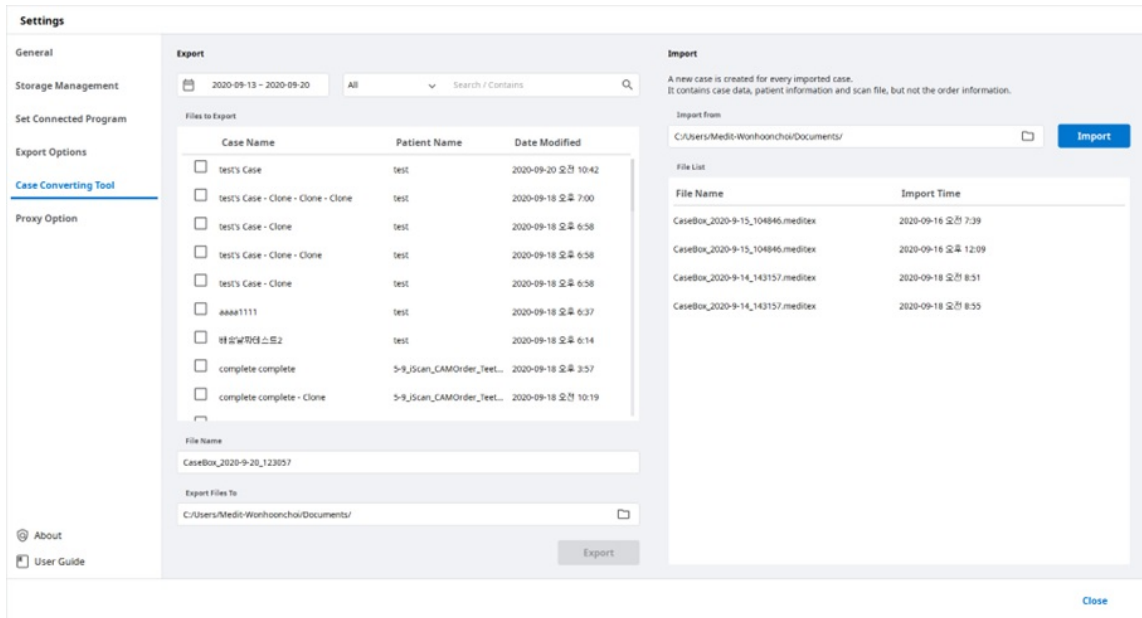


- İçe aktarma bölümünde, içe aktarmak istediğiniz .meditex dosyası için PC'nize göz atmak üzere klasör simgesine tıklayın.
- "İçe Aktar" düğmesini tıklayın ve içe aktarılan dosyayı aşağıdaki dosya listesinden kontrol edin.

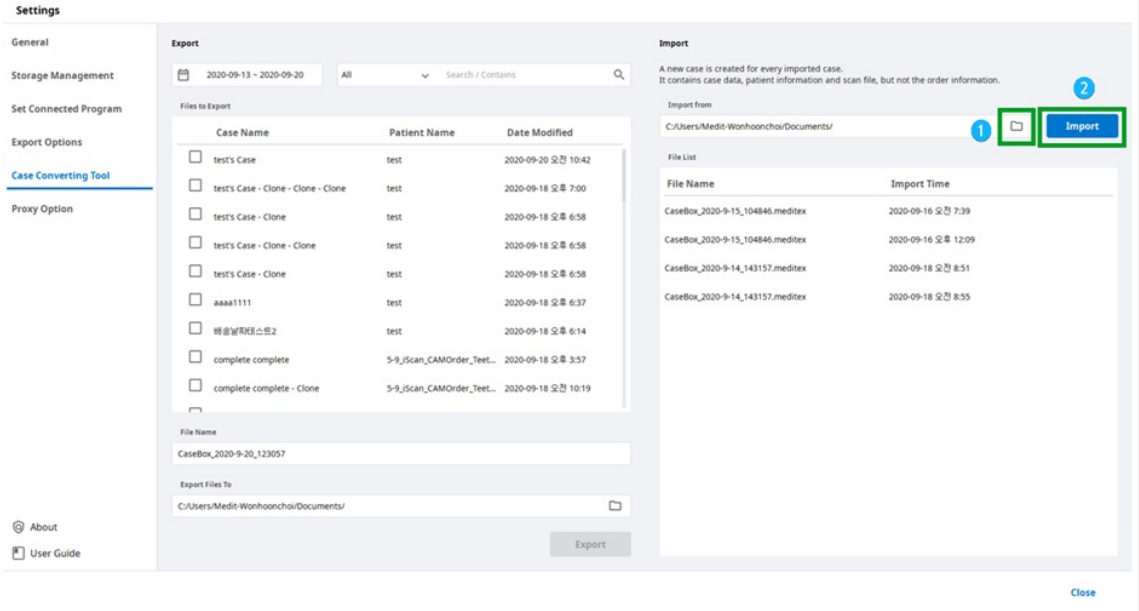

5. İçe aktarılan vaka, Case Box'da (Klinik hesabı) veya Work Box'da (Lab hesabı) da görünecektir.

Proxy Seçenekleri

Bazı sınırlı ağ ortamlarında, ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.

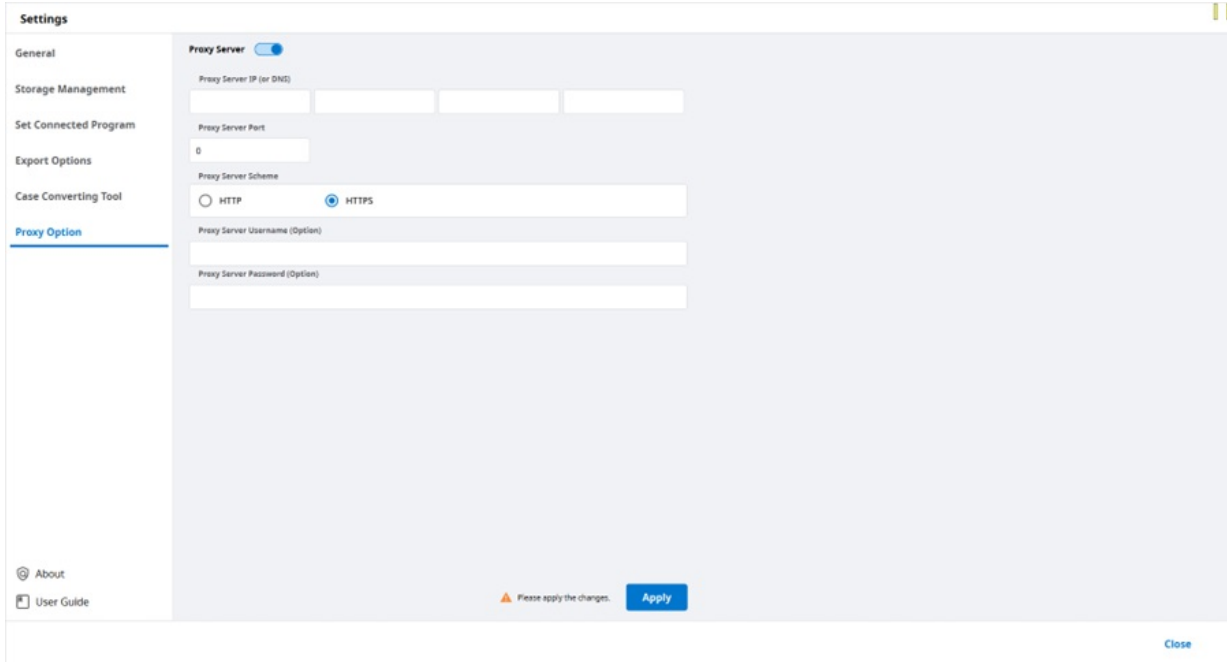

Hakkında

Medit Link hakkında detaylı bilgi gösterir.



Kullanıcı Kılavuzu

Medit Link kullanım kılavuzuna erişin.

Kullanım kılavuzunu açmak için İnternet bağlantısı gerekir.

Dosya Görüntüleyici

Dosya Görüntüleyici, Medit Link'e bağlı programlardan elde edilen veriler ve kullanıcılar tarafından eklenen veriler dahil olmak üzere çeşitli verileri gruplandırır ve gösterir.


Verileri görüntüleme/gizleme, opaklığı ayarlama ve verileri silme gibi temel yönetim işlevlerini sağlar.

Aşağıdaki biçimlerdeki dosyaların ön izlemelerini destekler:

- 3D veri: STL, OBJ, PLY
- 2D görseller: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video dosyaları: MKV, MP4, AVI, WMV

Veri Ağacı

Veri ağacında vaka için tüm verileri gruplayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca verileri gösterebilir/gizleyebilir, şeffaflığı ayarlayabilir ve veri ağacından verileri silebilirsiniz.

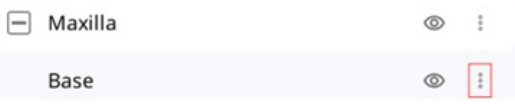	Göster/Gizle	Verileri görüntüleyebilir/gizleyebilirsiniz.
	Opaklık	Veri ağacındaki verilerden birine tıkladığınızda kaydırma çubuğu görünür. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek gösterilen verilerin opaklığını ayarlayabilirsiniz. 
	Daha Fazla	Daha Fazla simgesine tıklamak, mevcut ek özellikleri gösterir.  • Sadece Bunu Göster: Diğer tüm verileri gizler ve yalnızca mevcut verileri gösterir. • Gizle: Mevcut verileri gizler. • Kopya Oluştur: Verileri kopyalayın ve ekler grubuna ekleyin. • Dışa Aktar: Seçili dosyaları dışa aktarın. • Yeniden İsimlendir: Verinin ismini değiştirin. • Sil: Verileri siler.





iNot

Çevrimiçi olduğunuzda verileri yeniden adlandırabilirsiniz.

Model Kontrol Araçları

3D Model Kontrolü

	Pan	Modeli hareket ettirin.
---	-----	-------------------------

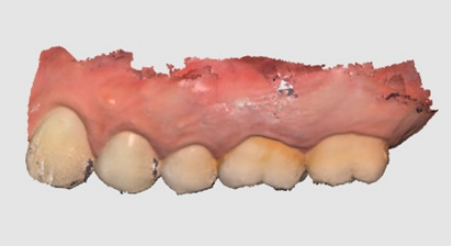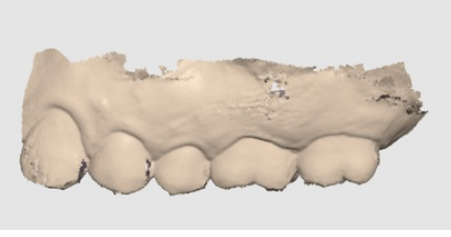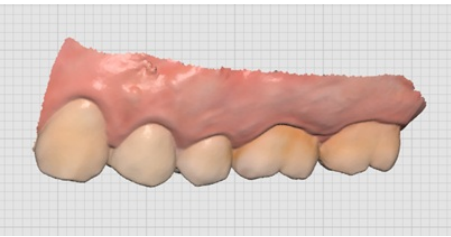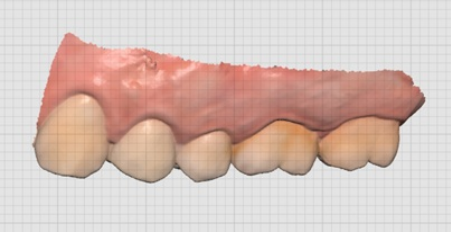	Döndür	Modeli döndürün.
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.
	Sığdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.
	Model Görüntüleme Modu	Doku Açık Verileri gerçek doku renklerinde gösterin. 
		Doku Kapalı Verileri tek bir renkte gösterin. 
	Izgara Ayarları (mm)	Izgara Açık Izgarayı arka planda gösterin. 
		Kaplama Açık Izgarayı modelin üzerine yerleştirin. 
		Izgara Kapalı Izgarayı gizleyin.

2D Görüntü Kontrolü


< >	Sonraki/Önceki Görüntü	Görüntüler arasında hareket eder.
	Düzenle	Görüntüyü düzenleyin.
 	Sıkıştır/Yapıştır Penceresi	Görüntü penceresini ayırabilir ve istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz. Pencereyi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Pencere orijinal konumuna geri yüklendiğinde, varsayılan boyutuna geri döner.

İşlev Araçları

Görüntü Yakalama ve Notlar


Mevcut ekrandan 2D bir görsel görüntüsü yakalayın, üzerine çizim yapın veya not alın.


Notlarınızla birlikte dosya olarak kaydedebilir ve referans olarak gönderebilirsiniz.

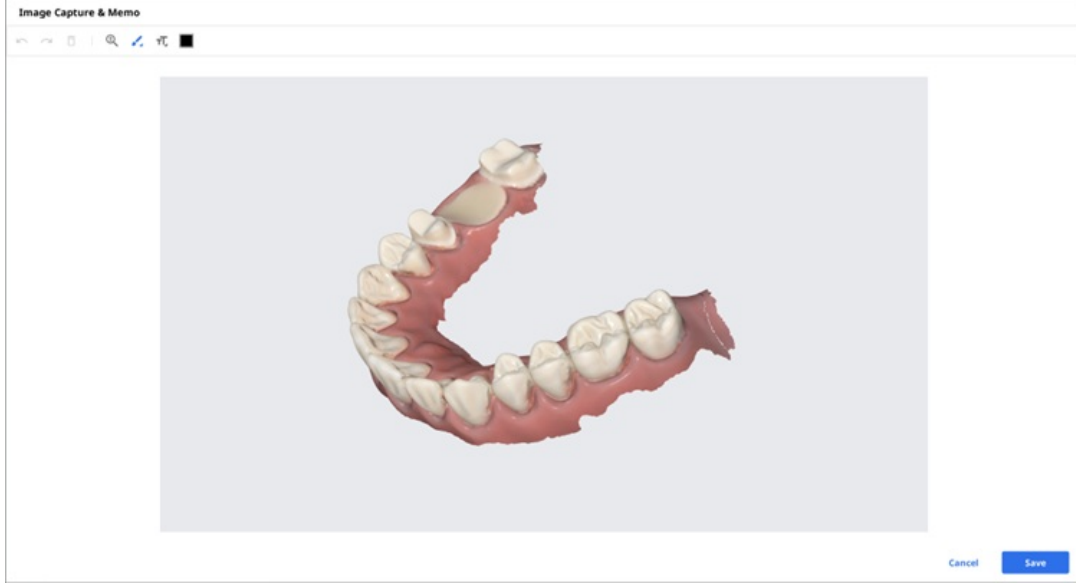

Ortho Capture

Görüntüleri mevcut izleme yönünde ve geçerli izleme yönünün üst/alt/sol/sağ tarafından yakalayın.

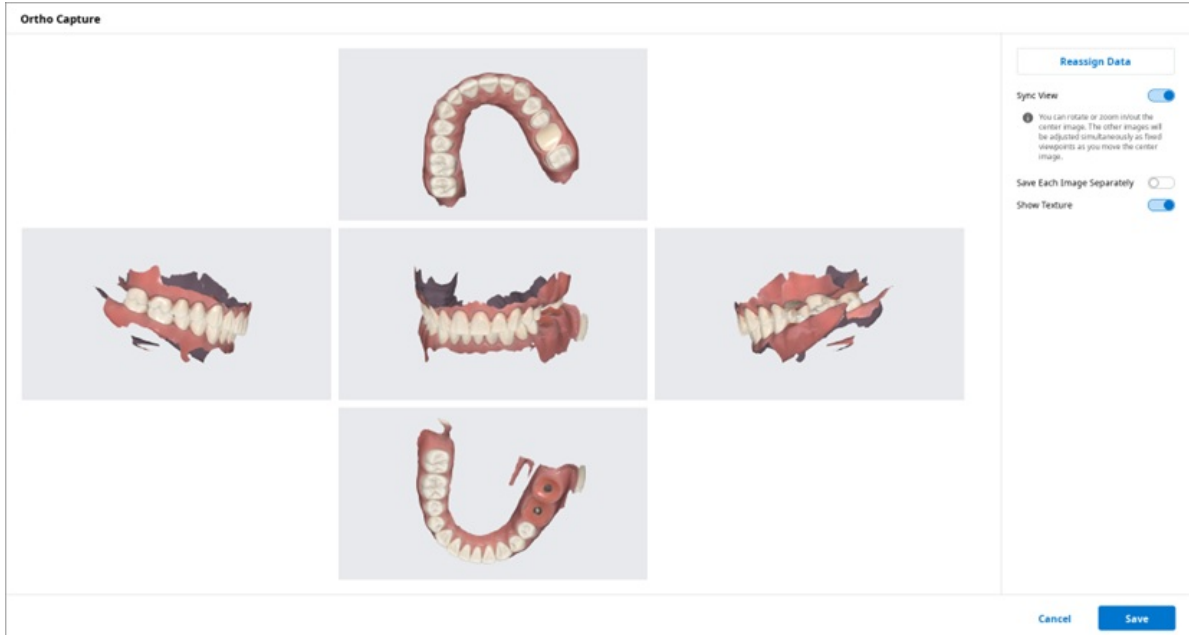

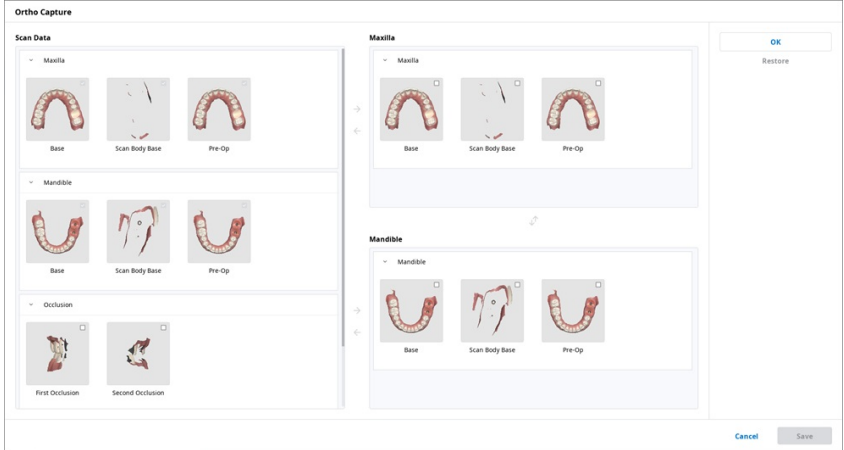Senkronizasyon Görünümü	Açık olduğunda, ortadaki görüntüyü döndürebilir veya yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz. Ortadaki görüntüyü hareket ettirdikçe diğer görüntüler aynı anda sabit bakış açıları olarak ayarlanacaktır. Kapalıyken, tüm görüntüleri tek tek kaydırabilir, döndürebilir veya yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz.
Her Görüntüyü Ayrı Ayrı Kaydet	Her görüntüyü yüksek çözünürlükte kaydedin.
Dokuyu Göster	Model için dokuyu açın/kapatın.
Verileri Yeniden Atama	Verileri Yeniden Ata özelliği ile maksilla/mandibula verilerini değiştirin. Ortho Capture'ın sonuç görüntülerini oluşturmak ve kullanmak için değiştirilen verileri kullanabilirsiniz.  • Tarama Verileri: Vaka için tarama verilerinin tümü gösterilir. • Maksilla: Maksilla için seçtiğiniz veriler görüntülenir. • Mandibula: Mandibula için seçtiğiniz veriler görüntülenir.

Boşlukları Doldur

3D mesh verilerindeki boş alanları doldurun.



Kırpma


Kırpma aracı, verileri düzenlemek için çeşitli araçlar sağlar.



Seçilen 3D mesh veriler, pencerenin alt kısmında bulunan farklı araçlar kullanılarak düzenlenebilir.

Seçim		Akıllı Diş Seçimi	Gingiva kısımlarını dışarıda bırakarak, arktaki tüm dişleri otomatik olarak seçin. iNote Bu işlev yalnızca "GPU Kullan" seçeneği açıkken Medit Scan for Clinics tarafından alınan tarama verileri için kullanılabilir.
		Akıllı Tek Diş Seçimi	Gingiva kısımlarını dışarıda bırakarak tek bir dişin alanını otomatik olarak seçin. Dişin üzerine tıklayın, basın ve mouseu sürükleyin.
		Polyline Seçimi	Ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm varlıkları seçer.
		Fırça Seçimi	Ekrandaki serbest çizilmiş bir yol üzerindeki tüm varlıkları seçer. Yalnızca ön yüz seçilecektir. Fırça 3 farklı boyutta gelir.
Seçilen Alanın Ayarlanması		Seçili Alanı Sığdırmak için Küçült	Butona her bastığınızda seçili alanı küçültür.
		Seçili Alanı Genişlet	Butona her bastığınızda seçili alanı genişletir.
		Seçili Alanı Ters Çevir	Seçimi tersine çevirir.
Seçimi kaldırma		Seçim/Seçimi Kaldırma	Açık olduğunda, çeşitli araçlar kullanarak alanın seçimini kaldırır.
		Tüm Seçimi Temizle	Tüm seçili alanları temizler.
		Seçili Alanı Sil	Seçilen alandan verileri silin.

1. Alan seçim araçlarıyla kırmak istediğiniz alanı seçin.

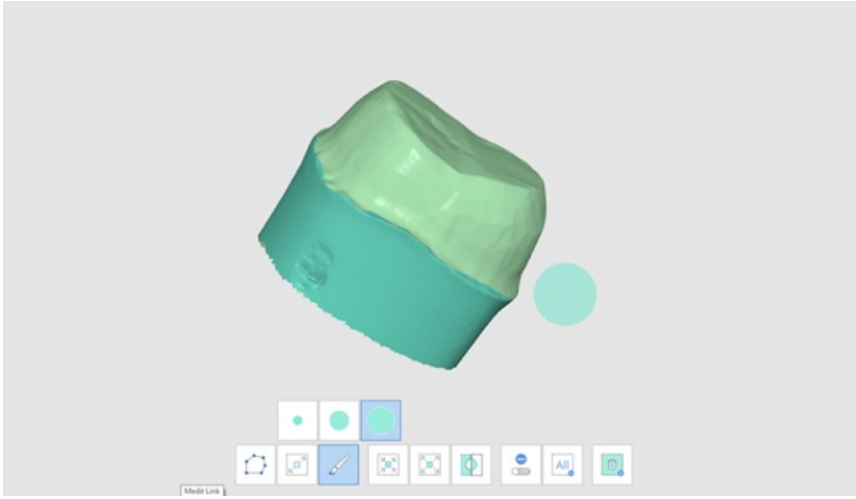


iNote


Polyline kırpma aracı, ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm objeleri seçerken, Fırça kırpma aracı yalnızca ön yüz verilerini seçer.

2. Aşağıdaki üç araçla seçimi tersine çevirebilir, küçültebilir veya genişletebilirsiniz.



- Seçili Alanı Ters Çevir

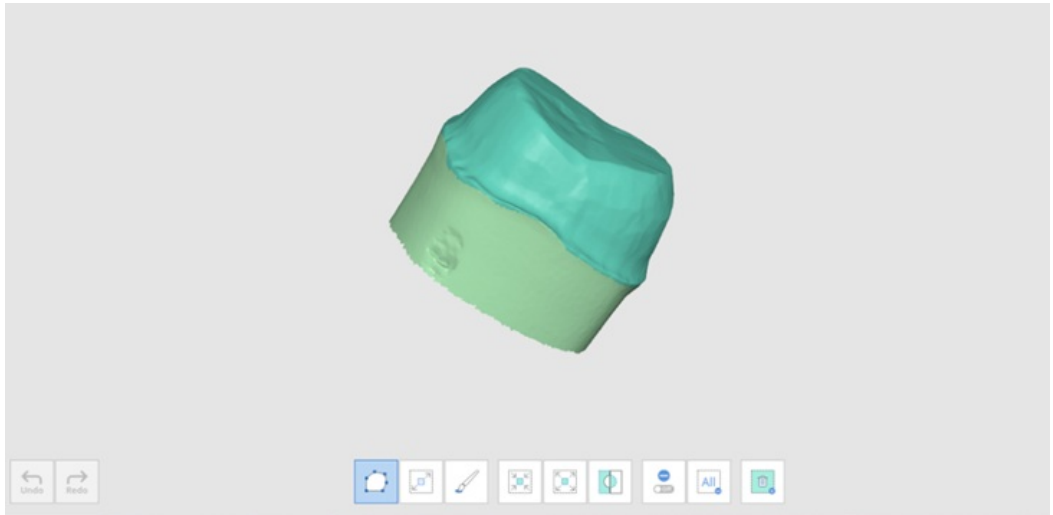

- Seçili Alanı Sığıdırmak için Küçült

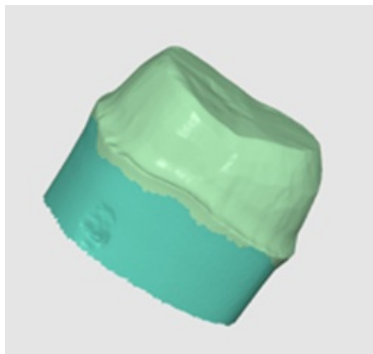

- Seçili Alanı Genişlet

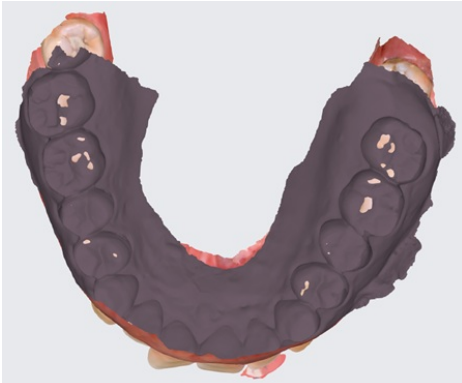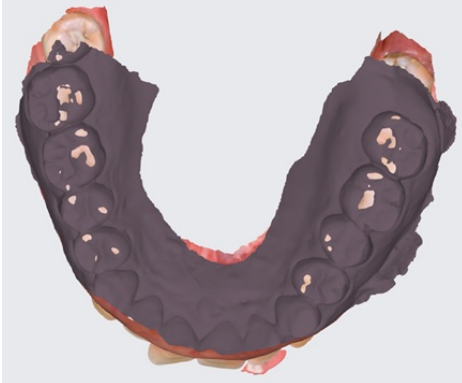Orta	Compensation Level 	
Yüksek	Compensation Level 	
Kapalı	Compensation Level 	

Mandibular Hareket

Üst ve alt dişler arasındaki dinamik oklüzal temasları görmek için Medit Scan for Clinics'te kaydedilen mandibular hareketleri oynatabilirsiniz.



	Serbest Hareket	Serbest mandibular hareket kaydını oynatın.
	Sol Lateral Hareket	Mandibulanın sola doğru hareket kaydını oynatın.
	Sağ Lateral Hareket	Mandibulanın sağa doğru hareket kaydını oynatın.
	Protruziv Hareket	Mandibulanın ileriye doğru hareket kaydını oynatın.

Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme

Medit Scan uygulamasından birden fazla oklüzyon verisi sonucu alabilirsiniz.

Medit Link, sonuçları "Dosya Görüntüleyici" aracılığıyla yönetme işlevi de sağlar.

Birden çok sonuç nasıl yönetilir?


Kullanıcı Medit Scan for Clinics'ten çoklu oklüzyon sonuçları aldığında, Medit Link bir sonuç seçme seçeneği sunar.

Sonuçların listesi isme göre listelenir ve buradan bir öge seçebilirsiniz.

Seçilen model, "Veri Ağacı" ve "Model Görüntüleme Alanı"nda gösterilecektir.



Ok simgelerini kullanarak listeyi daraltabilir ve ögeyi değiştirebilirsiniz.

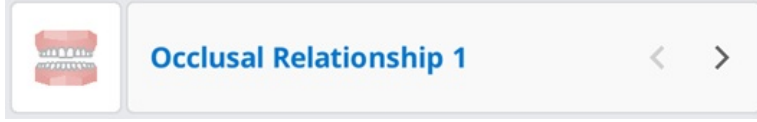

Görüntüleme Seçenekleri

Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinin yerleşimlerini özelleştirmek için Görüntüleme Seçenekleri'ni değiştirebilirsiniz.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Durum Filtreleri

Vaka durumunu temsil eden her filtreyi gösterin veya gizleyin. Case Box/Work Box/In Box/Order Box'da ekranda gizli durum filtreleri görüntülenmez.

Gösterilen filtrelerle ihtiyacınız olan vakayı kolayca bulabilirsiniz.

View Options

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

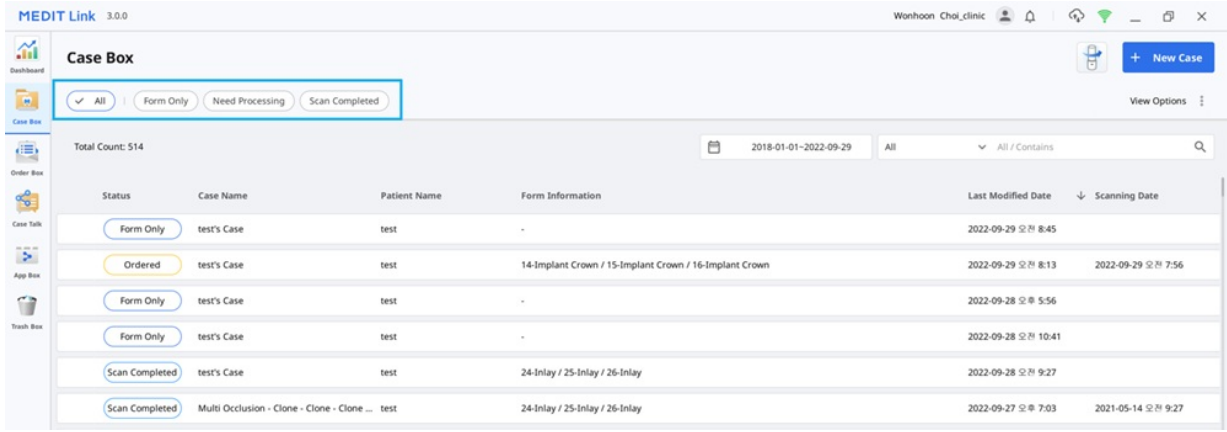

- Yalnızca belli durumdaki vakaları görüntülemek için görüntülemek istediğiniz durumu tıklayabilirsiniz.
- Aynı anda birden fazla durum seçebilirsiniz.

Tüm boxlar için mevcut filtreleme seçenekleri:

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed
In Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Desteklenmiyor

Liste Öğeleri

Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinde görüntülenecek öğeleri seçin. Kullanıcı ortamı için en iyi duruma getirmek üzere, liste görünümünde tablo öğelerinin sırasını değiştirebilir veya tablo sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- :: Status
- :: Case Name
- :: Patient Name
- :: Form Information
- :: Last Modified Date
- :: Scanning Date

Hidden

Show All

- :: Birth Date
- :: Order Date
- :: Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

Total Count: 514



2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Görünüm Türü

Case Box'daki Galeri Görünümü ve Liste Görünümü arasından görünüm türünü değiştirin.

Galeri Görünümü

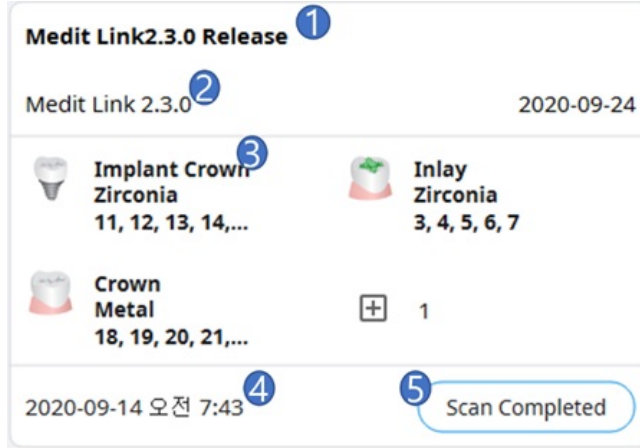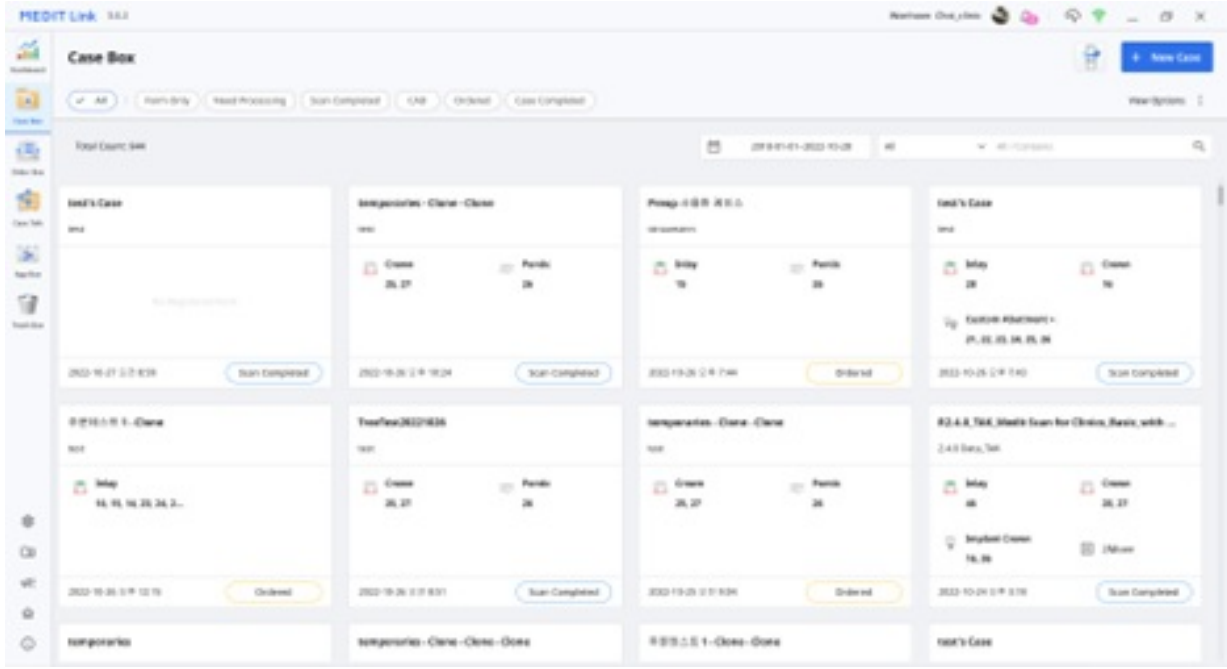

1	Vaka adı
2	Hasta adı ve doğum tarihi
3	Form bilgileri
4	Tarama tarihi
5	Vaka durumu

Liste Görünümü

Status	Case Name	Patient Name	Appointment Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name
Scan Completed	Health Case	Ali	-	2022-10-26 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	Ali	26-10-2022 / 16:00 / 17:00	2022-10-27 17:13:02		
Scan Only	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Scan Only	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	Ali	10-10-2022 / 10:00 / 11:00 / 12:00	2022-10-27 17:13:02		
Scan Only	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Scan Only	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Scan Only	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Ordered	Health Case	Ali	10-10-2022 / 10:00 / 11:00	2022-10-27 17:13:02		Wondemariam Lab
Scan Completed	Health Case	Ali	10-10-2022 / 10:00 / 11:00 / 12:00	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	Ali	10-10-2022 / 10:00 / 11:00 / 12:00	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	
Scan Completed	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02		
Scan Completed	Health Case	Ali	-	2022-10-27 17:13:02	2022-10-27 17:13:02	

Gruplama

Listedeki vakaları seçilen seçeneğe göre sınıflandırmak ve yeniden düzenlemek için bir gruplama seçeneği belirleyin.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None v

- ☒ None
- ☐ Patient Name
- ☐ Order Date
- ☐ Scanning Date

Sorting Last Modified Date >

Her box için aşağıdaki gruplama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama
Case Box	Hiçbiri
	Hasta Adı
	Tarama Tarihi
	Sipariş Tarihi
	Hiçbiri

Order Box	Tarama Tarihi
	Sipariş Tarihi
	Talep Edilen Teslim Tarihi
In Box	Hiçbiri
	Sipariş Tarihi
	Talep Edilen Teslim Tarihi
Work Box	Hiçbiri
	Talep Edilen Teslim Tarihi

iNot

Gruplama ve sıralama seçenekleri, Trash Box ve Case Talk'da kullanılamaz.

Sıralama

Seçilen seçeneğe göre listedeki vakaların sırasını değiştirmek için bir sıralama seçeneği belirleyin.

View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

Sorting

Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

Her box için aşağıdaki sıralama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama	Sıralama
Case Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Hasta Adı	Son Değişiklik Tarihi / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Tarama Tarihi / Lab Adı
	Hiçbiri	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı

Order Box	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı
In Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Klinik Adı
Work Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Klinik Adı

iNot

Gruplama ve sıralama seçenekleri, Trash Box ve Case Talk'da kullanılamaz.

Filtreleme ve Arama

Tarihe Göre Filtreleme

Ayarlanan süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyin ve görüntüleyin.

1. Süre filtresini tıklayın.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Listedeki süreyi seçin.

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- Hepsi: Tüm vakaları gösterir.
- Özel Aralık: Başlangıç ve bitiş tarihi özel olarak belirlenen bir dönem içinde son değişikliği yapılan vakaları belirtin.
- Bugün: İçinde bulunulan günde değiştirilen vakaları gösterir.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 7 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir haftada değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 30 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir ayda değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Bu Ay: İçinde bulunulan ayda değiştirilen vakaları gösterir.
- Önceki Ay: Önceki ayda değiştirilen vakaları gösterir.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Gelişmiş Arama Özellikleri

İstediğiniz bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için arama özelliklerinden yararlanın.

All ▼ Search / Contains 🔍

Her box için aşağıdaki Arama Kriterleri mevcuttur:

Case Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Form Bilgileri, Lab Adı
Order Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Lab Adı, Sipariş ID
In Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID
Work Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Form Bilgileri, Klinik Adı, Sipariş ID
Case Talk	Case Talk Adı (İçerir), Hasta Adı (Eşittir)
Trash Box – (Klinik)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Lab Adı, Silen
Trash Box – (Lab)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Silen

Arama Kriterlerini seçebilir ve İçerir ve Eşittir mantığı arasında seçim yapabilirsiniz.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

Vaka Oluřturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme

Vakalar Oluřturma

Case Box'da Vaka Oluřturma (Klinik)

1. Sağ üst köředeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

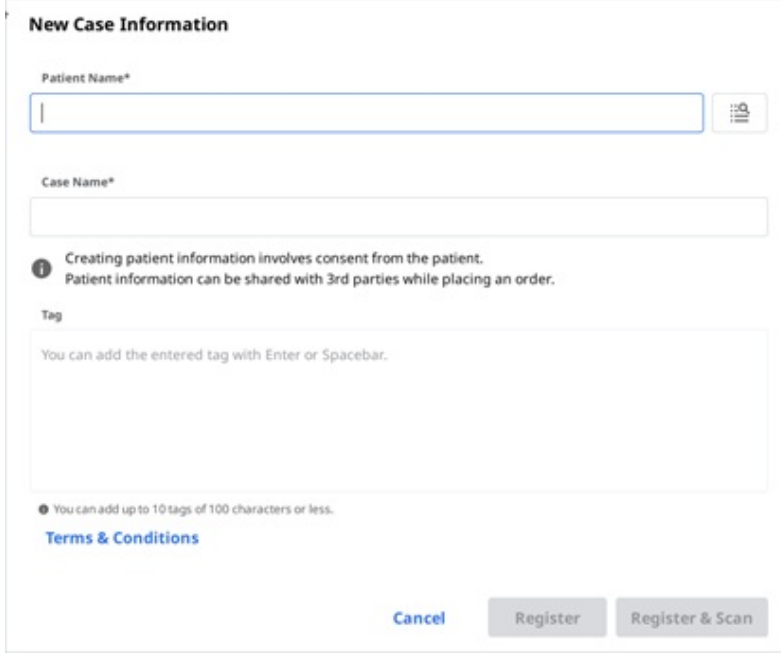

The form is titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a small icon to its right.
- Case Name***: A text input field.
- Tag**: A text input field with a placeholder text: "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Terms & Conditions**: A link below the tag field.
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan" buttons at the bottom.


Below the Case Name field, there is a note: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."

2. Hastanın adı ve vaka adı gibi temel bilgileri girin.

- Hasta listesinde olmayan bir isim girerseniz yeni bir hasta eklenecektir.
- Hasta listesinde bulunan bir isim girerseniz, listeden seçebilirsiniz.
- Mevcut bir hasta için bir vaka kaydediliyorsa, mevcut bir hastayı seçmek için Hasta Listesi simgesine tıklayın.



- Hasta Listesi iletişim kutusunda yeni bir hasta kaydedebilir veya mevcut bir hastanın bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

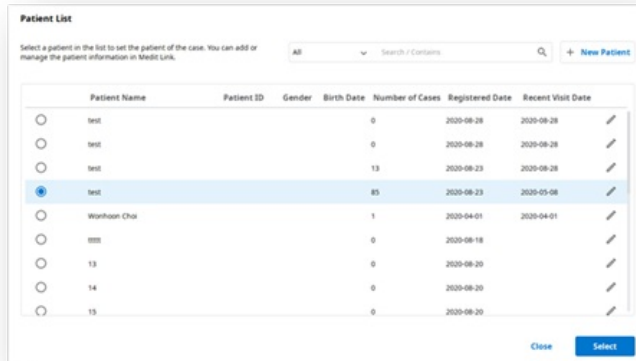

The dialog box is titled "Patient List". It contains a search bar and a table of patients.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhuzen Chis				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	0000				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	13				0	2020-08-20		

Buttons: Close, Select

3. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de deęiřtirebilirsiniz.
4. Vaka kaydını tamamlamak ve taramaya devam etmek için "Kaydet & Tara"ya tıklayın.
 - **Kaydet**: Vakanın form bilgilerini kaydetmek için Form sekmesine gidin.
 - **Kaydet & Tara**: Ana sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu, birden çok vakayı

kaydederken kullanışlıdır.

Work Box'da Vaka Oluşturma (Lab)

1. Sağ üst köşedeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Cancel](#) [Register](#)

2. Klinik adını girin veya seçin.
3. Hasta adını ve vaka adını girin. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de değiştirebilirsiniz.
4. İşin tamamlanma tarihini göz önünde bulundurarak beklenen teslim tarihini girin.
5. Vakayı kaydettikten sonra, ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Vakaları Düzenleme

Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)

1. Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Patient Name*
 [iii](#)

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Hastanın adını değiştirmek için "Ara" simgesine tıklayın. Doğrudan düzenlenemeyeceğini unutmayın. Bunun yerine, mevcut adı ile değiştirmek istediğiniz bir hasta adı bulabilir ve listeden hasta bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhooon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Mevcut olanla değiştirmek istediğiniz hastanın adını kontrol edin.
4. Yeni bir hasta oluşturmak için "Yeni Hasta" butonuna tıklayın.
5. Hasta hakkında kayıtlı bilgileri değiştirmek için "Düzenle" düğmesini kullanın.
6. İşlemi bitirmek için "Uygula" butonuna tıklayın.

Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)

1. Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Düzenleme tamamlandıktan sonra "Uygula" düğmesine tıklayın.

iNot

In Box'da sipariş yoluyla alınan vakaların bilgilerini düzenleyemezsiniz.

Vakaları Kopyalama

Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni vakaya ne tür bilgileri kopyalamak istediğiniz sorulacak.

Information
 Select a clone type.

[Cancel](#) [Form Data Only](#) [All Data](#)

3. Yalnızca form bilgilerini mi yoksa tüm verileri mi çoğaltacağınızı seçin.
4. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.

Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni bir vaka oluşturmak için tüm verilerin kopyasını oluşturun.
3. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.

Vakayı Silme

Vaka Silme (Klinik ve Lab)

1. "Sil" simgesini tıklayın.



2. Vakayı silmek için "Tamam"ı tıklayın.

Warning
 Do you want to delete the case?

[Cancel](#) [OK](#)

3. Silinen vakalar Trash Box'a taşınır ve gerekirse kurtarılabilir.

Form Bilgileri

Bağılı program ve tedavi tipine göre form bilgilerini girebilirsiniz.

Girdiğiniz bilgiler, tarama veya CAD programları üzerinde çalışmak ve sipariş vermek için temel bilgiler olarak kullanılacaktır.

Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin

1. Tedavi bilgilerini dişlere göre mi yoksa arklara göre mi gireceğinizi seçin.
2. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyseniz, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak sipariş listesine kaydedilir.
3. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

CAD Sekmesine Girin

1. Tarama stratejinizi tanımlayacak belirtecek şu seçeneklerden birini seçin: Dişler/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
2. Diş numarasını/arkı/day numarasını seçin.
3. Ayrıntılı seçenekler ve CAD işlemleri için ayarları tanımlayın.
4. Ayarları kaydetmek için "Tamam"ı tıklayın.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak sipariş listesine kaydedilir.
5. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin

1. Kullanmak istediğiniz tarama programını seçin.
2. Tarama stratejinizi tanımlayacak belirtecek şu seçeneklerden birini seçin: Dişler/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Yöntemler, seçilen tarama programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Diş	☐	☐
Ark	☐	☐
Flexible Multi-Die	☒	☐
Multi-Die	☒	☐

4. Tarama işlemi için diş, ark veya day numaralarını seçin.
5. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyseniz, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak listeye kaydedilir.


6. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

CAD Sekmesine Girin

1. Tarama stratejinizi tanımlayacak belirtecek şu seçeneklerden birini seçin: Dişler/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
2. Diş numarasını/arkı/day numarasını seçin.
3. Ayrıntılı seçenekler ve CAD işlemleri için ayarları tanımlayın.
4. Ayarları kaydetmek için "Tamam"ı tıklayın.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak listeye kaydedilir.
5. "Kaydet"i tıklayın.

Dişleri Köprüye Bağlama

Aynı malzeme birden çok komşu dişe uygulandığında birden çok dişi bir köprüye bağlayabilirsiniz. Birleştirmek veya bağlantısını kesmek için seçilen dişlerin yanındaki köprü simgesine tıklayın.

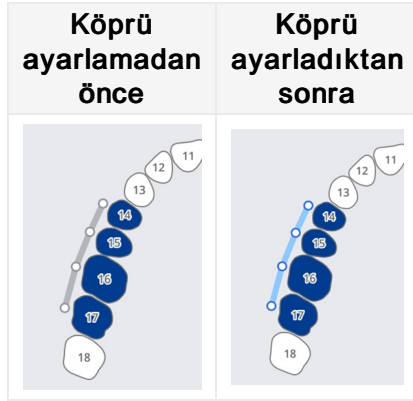

Tarama Seçeneklerini Ayarlama

Üzerinde çalıştığınız programa bağlı olarak çeşitli tarama seçenekleri sunulur.

Seçilen tarama seçenekleri her bir tarama programına aktarılır.

Medit Scan for Labs

Genel seçenekler

	Komşu Dişler	Preparasyonu yapılmış dişleri ve komşu dişleri işaretleyin ve bu bilgileri tarama programına aktarın.
	Antagonist	Antagonisti otomatik olarak işaretler ve bu bilgiyi tarama programına aktarır.
	Artikülatör	Tarama programında artikülatörü seçmek için seçenekleri gösterir.
	Hareket İşaretçisi	Tarama programında Çene Hareketi tarama stratejisinin kullanılmasına izin verir.

Dişlere göre seçenekler

	Tarama Gövdesi	Tarama programında tarama gövdesi için tarama stratejisini ayarlamanıza izin verir.
	Pre-Op Taraması	Tarama programında pre-op modeli taramak için stratejiyi ayarlamanıza izin verir.
	Wax-Up Taraması	Tarama programında wax-upları taramak için strateji ayarlamanıza izin verir.

Favorilere Ekleme

Bir ürünü favori olarak kaydederek hızlıca seçebilirsiniz.

Kayıtlı favoriler listesi şablon olarak yönetilir ve dışa aktarma ve içe aktarma özellikleri aracılığıyla paylaşılabilir.

Favorilere Ekle

1. Diş numarasını seçin.
2. Tür - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Tür – Yöntem – Materyal – Ton, hepsi seçilmese bile favori olarak kaydedilebilir.
3. "Yıldız" simgesini tıklayın.

☆
4. Diş numarası hariç, seçilen parametrelerin bir kombinasyonu, favori arama listenizde listelenir.

Favori Şablonları Yönetme

Farklı şablon türlerini kaydedebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ekle	Yeni bir şablon ekler.
Yeniden İsimlendir	Mevcut şablonu yeniden yeniden adlandırır.
Sil	Mevcut şablonu siler.
Dışa Aktar	Mevcut şablonu bir dosyaya aktarır.
İçe Aktar	Bir şablon dosyasını içe aktarır.

Tarama/CAD üzerinde çalışma

Tarama Süreci

Girilen bilgilere göre taramaya devam edebilirsiniz.

1. Tedavi bilgilerini girin/kaydedin ve gerekli tarama seçeneklerini seçin.
2. Pencerenin sağ üst köşesindeki "Tara" butonuna tıklayın.

CAD Süreci

Medit Link, exocad programı ile entegredir.

CAD	Tedavi bilgilerinin kaydedilmesi	Tedavi bilgilerinin doğrulanması	Doğrudan CAD yürütme	CAD sonuçlarını Medit Link'e aktarma
exocad	O	O	O	O

1. Ayarlar > Bağlı Programı Ayarla'da seçtiğiniz CAD programını listeden bağlayabilirsiniz.
2. CAD sekmesine görev bilgilerini ve tasarım seçeneklerini girin/kaydedin.
3. Pencerenin sağ üst köşesindeki "CAD" seçeneğine tıklayın.
4. Bağlı CAD programı çalıştırılır ve veriler otomatik olarak gönderilir.
5. Bağlı CAD programı çalıştırılır ve veriler otomatik olarak gönderilir.

iNot

Medit Link for Mac, CAD ile bağlantı kurma işlevini desteklemez.

Sonuç Dosyalarını Alma

Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktar

Medit Link, sonuçları siparişler aracılığıyla ortaklarla paylaşmanın yanı sıra, sonuçlarınızı dışa aktarma işlevini kullanarak istediğiniz dosya formatında saklamanıza olanak tanır.


Dosyaları Şuraya Aktar	Sonuçları saklamak istediğiniz yolu belirtin.
Klasör Adı	Sistem yeni bir klasör oluşturur ve tüm sonuçları bu klasörde saklar. Varsayılan klasör adı, adlandırma kuralı tarafından belirlenir. Ancak klasör adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Klasör Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
Dosya Adı	Sonuç için dosya adını ayarlar. Adlandırma kuralı, varsayılan dosya adını ayarlar. Ancak dosya adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Dosya Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
CAD Türü	Tasarım programınız için kullanılacak CAD programını seçin. Medit Link, dosyaları bu seçime göre ayarlayarak, herhangi bir ek eksen hizalaması olmadan tasarıma devam etmenizi sağlar.
Mesh Formatı	Mesh dosyasının formatını belirtir.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Dosyaları Sıkıştır	Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırır.

Bireysel Mesh Birleştirme	Maksilla veya mandibulanın sonucunu bireysel dişle birleştirir. Bir programa birden çok dosya aktarılamadığında kullanışlıdır.
Tüm Oklüzal İlişkiyi Dışa Aktar	Tarama uygulamasından birden fazla oklüzal sonuç oluşturulduğunda, tüm oklüzal sonuçları aynı anda dışa aktarabilirsiniz.
Vaka Bilgilerini PDF Olarak Kaydet	Vaka bilgilerini sonuçla birlikte pdf olarak kaydedin.

Seçilen Dosyaları Dışa Aktar

Medit Link, dosya görüntüleyicideki genişletilmiş menüden bir dışa aktarma işlevi sağlar. Bunu kullanın ve seçilen dosyaları kolayca dışa aktarabilirsiniz.

1. Veri grubunun yanındaki "Menü" simgesine veya dosya görüntüleyicinin veri ağacındaki bir varlığa tıklayın.
2. Ardından "Dışa Aktar"ı tıklayın.

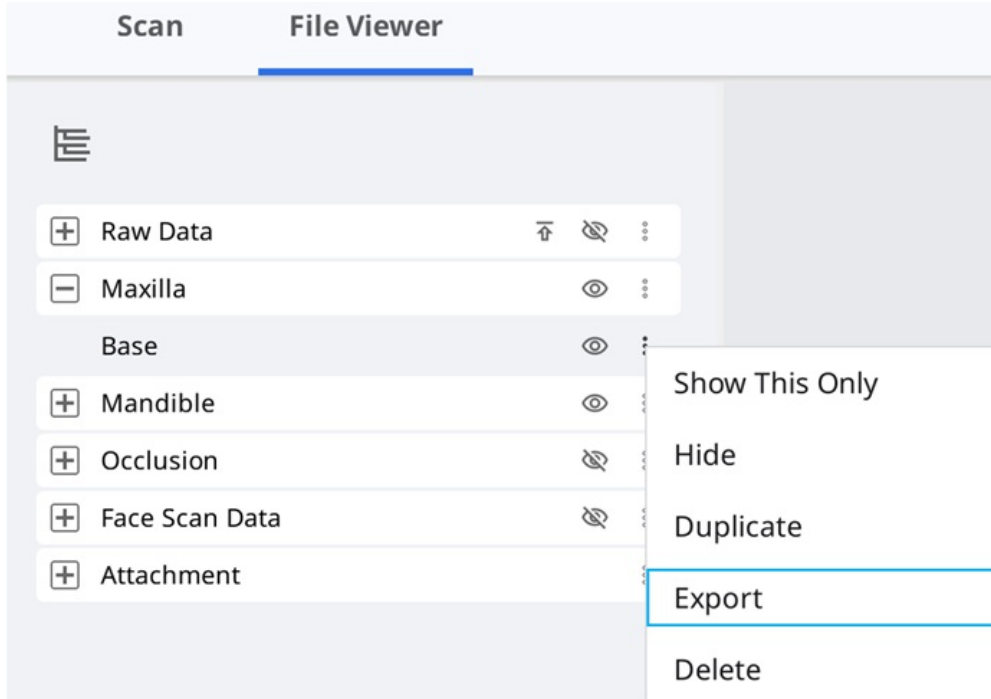

3. Dışa aktarma iletişim kutusu, yalnızca dışa aktarmak istediğiniz seçili dosyaları gösterir.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☒
- ☒ Maxilla
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Pre-Op
 - ☒ Base
 - ☒ Scan Body Base
- ☒ Occlusion
 - ☒ First Occlusion

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

4. Son olarak, "Dışa Aktar"ı tıklayın.

Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar


Medit Scan for Clinics kenar boşluğu çizgisini oluşturmak için bir işlev sunar ve Medit Link kenar boşluğu çizgisi CAD programına aktarabilir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma

Genel olarak, Medit Link kenar boşluğu çizgisini renkli olarak dönüştürür ve sonucu maksilla veya mandibula ile birlikte dışa aktarır. Renk bilgisini referans alarak, CAD'lerinde kenar boşluğu çizgisini oluşturabilirsiniz.

Örnek:

Maksilla

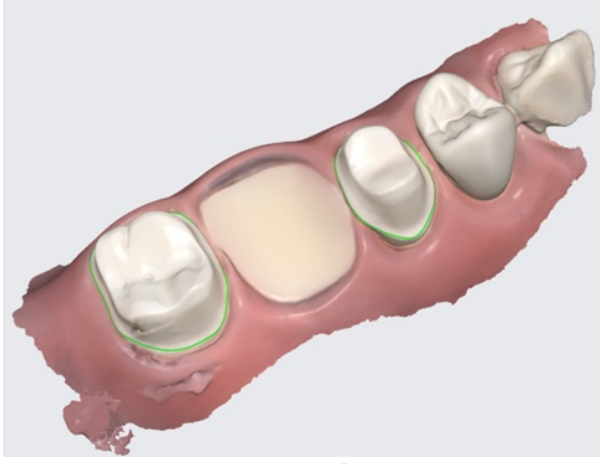

Renk olarak kenar boşluğu çizgisiyle sonuç

iNot

Bu özellik, meditMesh, OBJ ve PLY gibi renk bilgisi içeren formatlar için mevcuttur. Kenar boşluğu çizgisi STL'ye dönüşmez.

iNot

CAD türü > 3shape bu özelliği desteklememektedir.


Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma

exocad durumunda, Medit Link, kenar boşluğu çizgisini doğrudan exocad'a aktarılabilen “~margin.xyz” dosyasına aktarır.

Bu dosyayı ek iş yapmadan exocad'da kullanabilirsiniz.

Örnek:

Maksilla	Kenar Boşluğu Çizgisi
----------	-----------------------

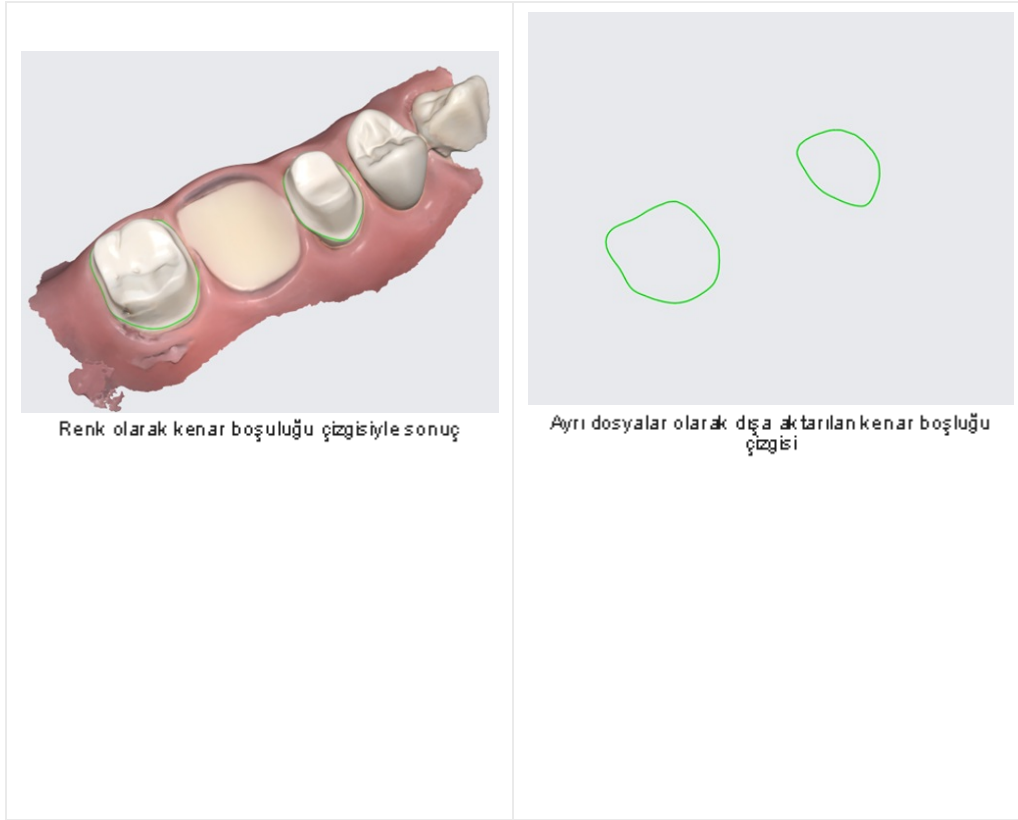

Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar

Medit Link, vaka listesini CSV biçiminde dışa aktarma işlevi sağlar.


Vaka listesini temel bilgilerle dışa aktarabilir ve vakaları kolayca yönetebilirsiniz.

Medit Link uygulamasının aşağıdaki menüsünde "CSV'ye Aktar" işlevi mevcuttur.

- In Box
- Work Box

Vaka listesi nasıl dışa aktarılır?

1. In Box veya Work Box'a gidin.
2. Dışa aktarmak istediğiniz vakaları seçin.

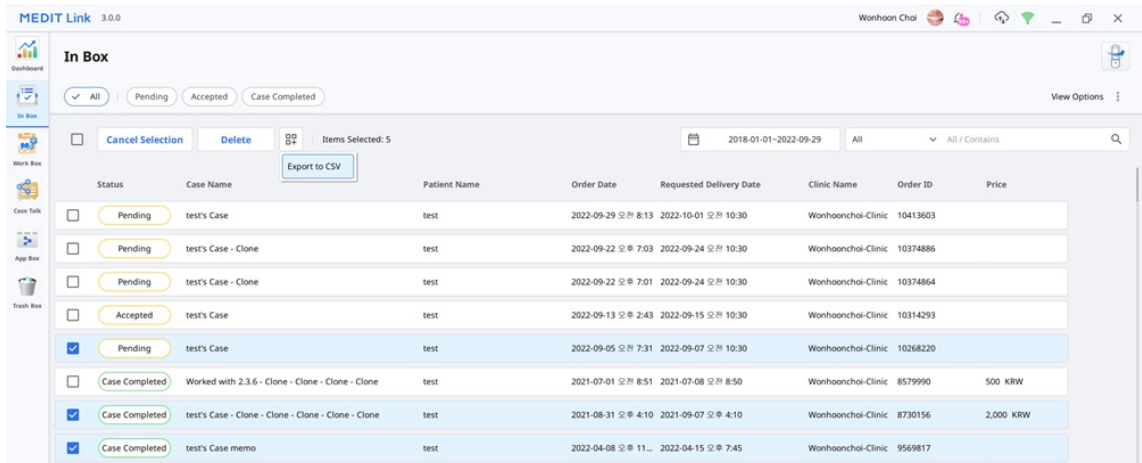

3. "CSV'ye Aktar" seçeneğini seçmek için üst kısımdaki "Genişletilmiş menü" düğmesini tıklayın.



4. Yolu ve dosya adını tanımlayın ve sonucu kaydedin.

Medit Link Web'den Dosyaları İndirme

Medit Link, indirme işlevini sağlar.

Sonuç dosyalarına Medit Link uygulamasını yüklemeyen ulaşmak isterseniz, dosyaları Medit Link web servisinden indirebilirsiniz.

iNot


Dosyaları webden indirmek için veriler Medit Cloud'a yüklenmelidir.

İndirme işlevi, Medit Link web hizmetinin aşağıdaki menülerinde mevcuttur.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Sağ üstte "İndir" düğmesini bulabilirsiniz.

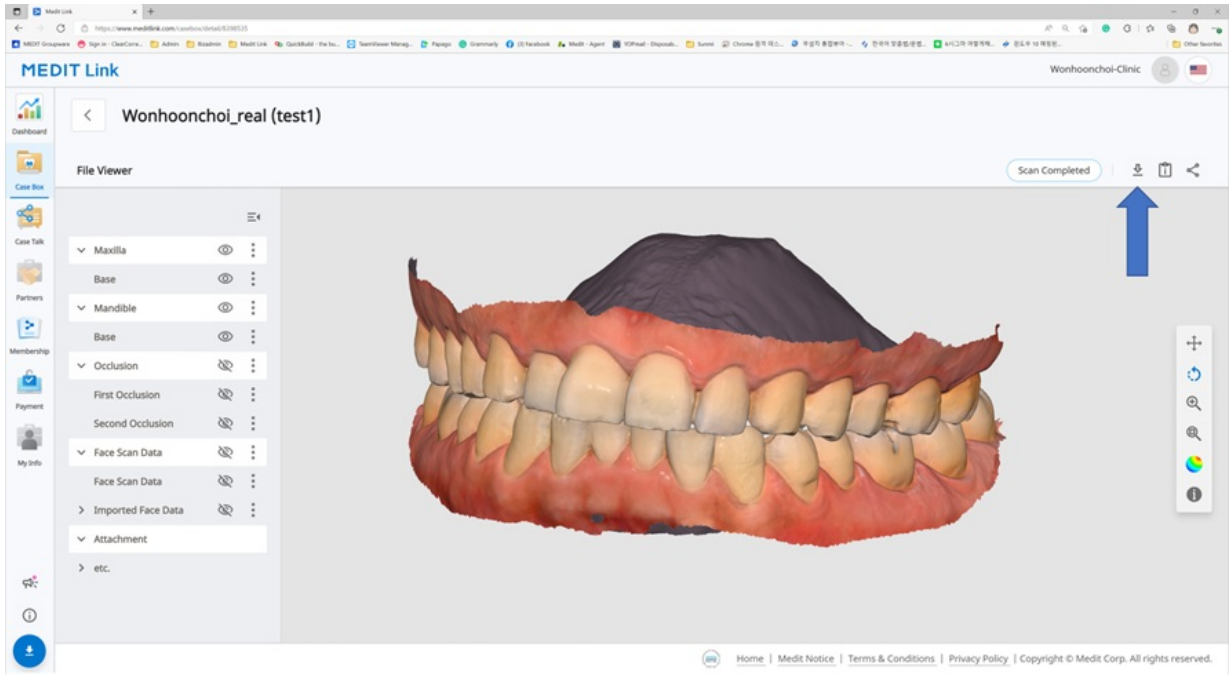


Web Viewer

Case Talk kullanarak vakayı paylaştığınızda, indirmeye izin verip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

“İndirme İzni Ver” seçeneğini işaretleyip vakayı paylaşırsanız, paylaşılan bağlantıya bağlanan tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.

Web Viewerda, sağ üstte "İndir" simgesini bulabilirsiniz.

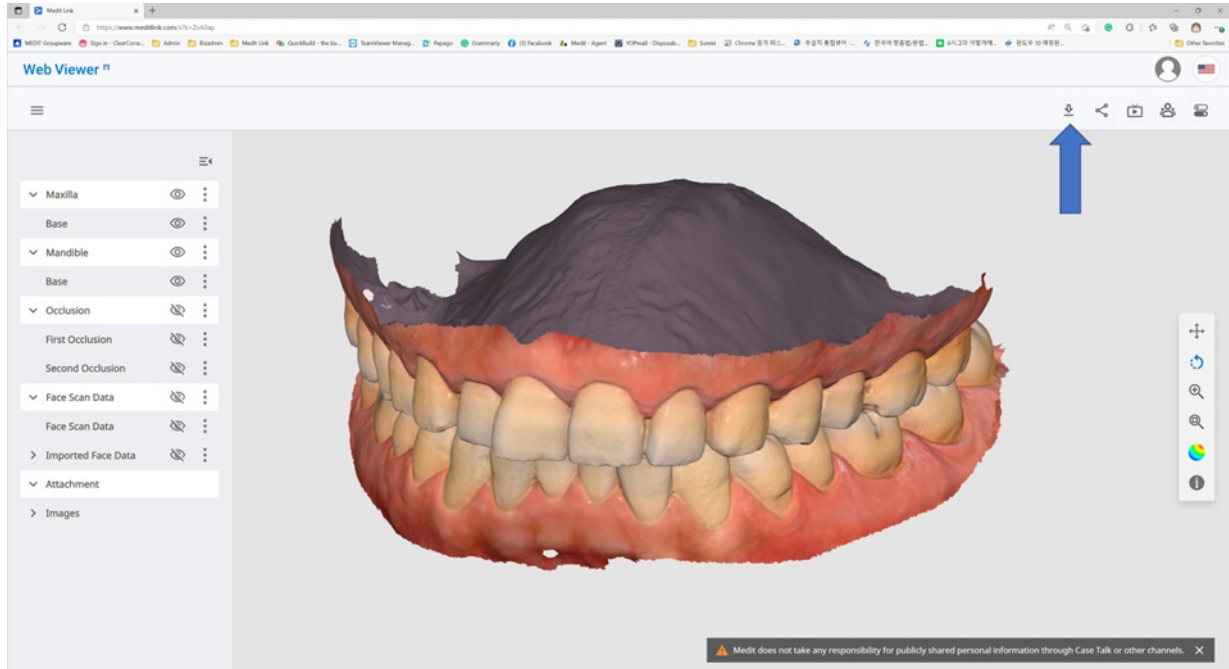

Nasıl indirilir?

1. "İndir"i tıklayın.



2. İndirme iletişim kutusundan mesh formatını seçin.

Download [Premium Feature](#)

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

[Close](#) [OK](#)

3. Ardından "Tamam"ı tıklayın.

Vakaları Sipariş Etme/Yönetme

Bağlı programlardan elde edilen veriler ve kullanıcı tarafından eklenen verilerle kolayca bir vaka siparişi verebilirsiniz.

Vaka Sipariş Etme

Case Box'ta ortaklarınız için sipariş verebilirsiniz.

1. "Sipariş" butonuna tıklayın.
2. Siparişiniz için gerekli bilgileri kontrol edin.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR

[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. Bir ortak seçin.
4. Sipariş Listesi sekmesinden ürün bilgilerini kontrol edin.
 - Hasta adını paylaşıp paylaşmayacağınıza karar verebilirsiniz.
5. Dosya Listesi sekmesinden sipariş edilecek dosyaları kontrol edin.
6. İstediğiniz teslim tarihini giriniz.
 - Varsayılan, sipariş tarihinden 7 gün sonra olarak ayarlanmıştır.
7. Belirli ayrıntıların ana hatlarını çizmek için ortağınıza not ve etiketler ekleyebilirsiniz.
8. Tarama uygulamasından çok sayıda oklüzal sonuç oluşturulduğunda, "Tüm Oklüzal İlişkiyi Sırala" seçeneğini işaretleyerek tüm oklüzal sonuçları tek seferde gönderebilirsiniz.
9. Siparişinize devam edin.
 - **Ödemeyi Atla:** Medit Link tarafından sağlanan ödeme sistemini kullanmadan siparişe devam edin. "Sözleşmeli" statüsündeki bir ortaktan sipariş verirken kullanılabilir.
 - **Öde:** Siparişe devam etmek için Medit Link tarafından sağlanan ödeme sistemini kullanın. Sözleşmeli bir ortaktan sipariş verirken kullanılabilir.
 - **Tamam:** Ürün fiyatı ile ilgili herhangi bir koşul olmaksızın siparişe devam edilir. "Ortaklık" statüsündeki bir ortaktan sipariş verildiğinde mevcuttur.

iNot

Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ödemeyi atla
- Öde

Siparişi Onaylama – (In Box)

- Siparişi aldıktan sonra kabul edin.
- Kabul edilen siparişler Work Box'a iletilir.

<

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

Siparişi İptal Etme – (Order Box)

- Ortağınız kabul etmeden önce bir siparişi iptal edebilirsiniz.
- İptal edilenler yeniden sipariş edilebilir.

<

test's Case (test)

Cancel

Order

File Viewer

Pending

Siparişi Reddetme (In Box)

- Alınan bir siparişi reddedebilirsiniz.
- Reddedilenler yeniden sipariş edilebilir.

<

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme

Order Box'dan sipariş ettiğiniz vakanın detaylarını klinik hesabından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca lab hesabında In Box'ndan aldığınız vakayı da kontrol edebilirsiniz.

MEDIT Link 3.1.0

wonhoonchoi_Lab3

test's Case / wonhoonchoi Beta

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

Order ID

5718975

Patient Name

test

Partner Name

wonhoonchoi Beta

Scan Date

2020-11-10 06:18

Order Date

2020-11-24 06:15

Requested Delivery Date

2020-11-24 06:15

Expected Delivery Date

2020-11-24 06:15

Memo

Tag

Order List

Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Sipariş Bilgisi	Siparişe dahil edilebilecek bilgiler şu şekildedir: Sipariş ID/hasta adı/hesap adı/tarama tarihi/sipariş tarihi/teslimat tarihi/son teslimat tarihi/not. Sipariş edilen ürün detaylarını ve teslimat bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Sipariş Listesi	Sipariş listesi, sipariş edilen ürünün ayrıntılarını görüntüler.
Gönderim	Gönderim bilgilerini girin/kontrol edin.

Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)

Tamamlanan vakanın gönderim bilgilerini girin ve gönderime başlayın.

1. "Gönderim" sekmesine tıklayın.
2. Gönderim bilgilerini girin ve "Kaydet"i tıklayın.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Girilen bilgiler ortağınıza gönderilir.

Teslimat Tarihlerini Yönetme

Sipariş verirken beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz. Bu bilgiler ortağınıza iletilecektir.

Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)

- Case Box'dan sipariş verirken talep ettiğiniz teslimat tarihini girebilirsiniz.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Varsayılan değer, sipariş tarihinden sonraki 7 gündür.
- Ürünleri teslim almak istediğiniz tarihi/saati girin ve siparişe devam edin.
- Kaydırıcıyı kullanarak saati kolayca ayarlayabilirsiniz.

Beklenen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)

- In Box'dan gelen talep için beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. Talep edilen teslimat tarihini ortakla kontrol edin ve "Düzenle" düğmesini kullanarak yeniden planlayın.



2. Fiili iş gününü dikkate alarak beklenen teslimat tarihini girin. Gerekirse yorum da bırakabilirsiniz.
3. "Uygula" yı tıklayın.

4. Beklenen teslimat tarihi ve not, siparişe birlikte iletilecektir.
 - Order Box'daki tarihi ve notları kontrol edebilirsiniz.
 - Beklenen teslimat tarihini değiştirebilirsiniz. Değişiklikler ortağınıza iletilecektir.
5. "Geçmiş" düğmesini kullanarak vaka geçmişini kontrol edebilirsiniz.



Vakayı Tamamlama

Tamamlama (Work Box/In Box)


Tüm görevler tamamlandığında, vaka çalışmasını tamamlamak için "Bitti"ye basın.

Vaka detaylarından bir vakayı tamamlama

Aç butonundan sağ tarafından "Menü" butonuna ulaşabilirsiniz.



"Menü" simgesini tıklayıp "Bitti"yi seçerek işi tamamlayın.

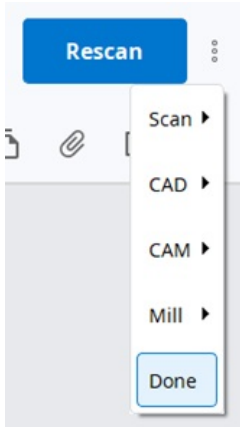


Vaka listesinden birden çok vakayı tamamlama

Work Box'dan vakaları seçtiğinizde, listenin en üstünde genişletilmiş menü düğmesi sağlanır.



Birden fazla vakayı aşağıdaki gibi tamamlayın:

1. Work Box'a gidin.
2. Tamamlanacak tüm vakaları seçin.

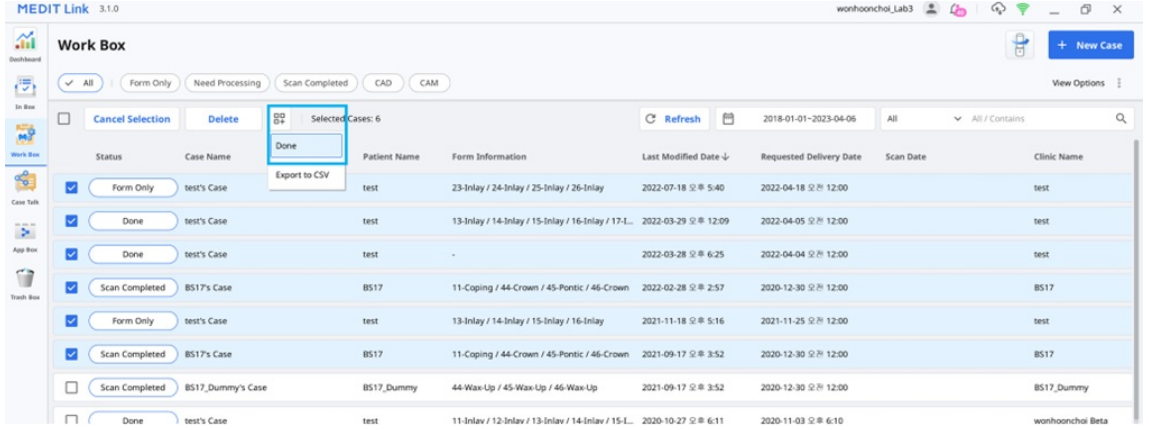

3. Yukarıda belirtilen "Genişletilmiş Menü" düğmesini tıklayın.




4. Listedeki "Bitti"yi seçin

Tamamlama (Case Box/Order Box)

Vaka laboratuvarında tamamlandıktan sonra, tüm sipariş sürecini tamamlamak için kliniğin vakayı onaylaması gerekir.

Laboratuvar çalışmalarını tamamladığında, klinik Order Box'ında "Teslimat Onayı" işlevini bulabilir.

Buna tıklayın, böylece tüm sipariş süreci tamamlanır ve vaka durumu "Case Completed" olarak değiştirilir.

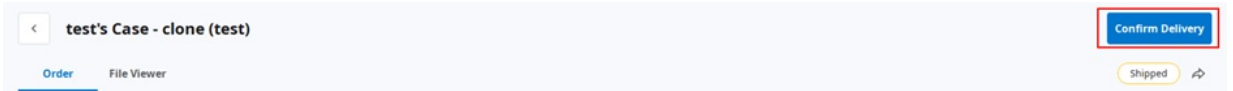

Case Box'da sipariş edilmemiş bir vakayı tamamlama

Laboratuvara sipariş edilmeyen vakalar için bu vakaları Case Box'dan tamamlayabilirsiniz.

1. Case Box'a gidin.
2. Tamamlamak istediğiniz vakayı seçin.

MEDIT Link 3.0.0 Wanhoon Choi_clinic

Case Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Cancel Selection | Delete | Items Selected: 4 | 2018-01-01 ~ 2022-09-29 | All / Contains

Case Completed

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오후 8:45	
☐ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오후 8:13	2022-09-29 오후 7:56
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 10:41	
☒ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오후 9:27	
☒ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오후 9:27
☐ Scan Completed	Preop 사용원 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 8:53

3. "Genişletilmiş Menü" düğmesini tıklayın.



4. Case Completed'i seçin.

Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma

Etiketleri kullanarak vakanız için ek bilgiler ekleyebilir ve bunları ortaklarınıza gönderebilirsiniz.

Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme

Etiketleri, yeni bir vaka oluşturduğunuzda veya vaka bilgilerini düzenlerken girebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Daha önce kullandığınız etiketleri kolayca arayabilir ve seçebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme

Sipariş verirken Sipariş iletişim kutusunda etiketleri kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

CancelOK

Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme

MEDIT Link 3.1.0

mandibluar movement - Clone - Clone (Test Occlusion)

FormFile Viewer

Scan Completed

Raw DataMaxillaBaseMandibleBaseOcclusionDynamic OcclusionAttachment

Occlusal Relationship 1

MemoEdit

TagsEdit

DoctornameSpecialmaterialSpecialComment

