

USER GUIDE

Medit Link

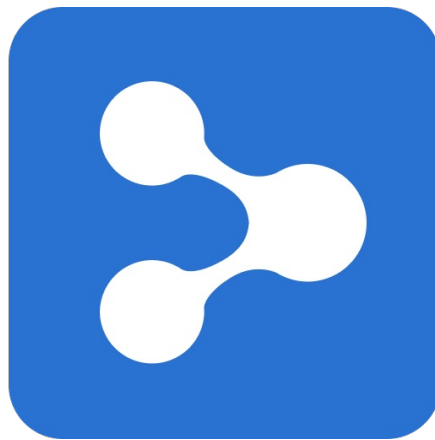


Table of Contents

Medit Link

简介	6
Medit Link	6
服务概览	6
云服务	7
带有订购系统的作业流程管理平台	7

Medit Link > 安装

系统配置要求	8
Windows的系统配置要求	8
macOS的系统配置要求	8
网页端服务的系统要求	8
推荐浏览器	8
移动设备的最低系统要求	8
在Windows上安装	9
在macOS上安装	11
Medit Link将与Medit Scan for Clinics以安装包的形式被一并安装。	11

Medit Link > Medit Link网页端

概览	15
Dashboard	16
Dashboard概览	16
Medit Insights	16
订阅Medit Insights	17
退订Medit Insights	18
Case Box/Work Box	19
病例筛选	19
按状态筛选	19
按时间段筛选	19
通过搜索筛选	20
病例详情	20
Order Box/In Box	22
订单详情	22
Order Box/In Box中的标签	22
Case Talk	23
创建Case Talk	23
设置共享权限类型与共享选项	24
Case Talk详情	25
Web Viewer	26
注释	27
留言	28
实时屏幕共享	29
数据树	29
“数据树”控制	29
3D模型控制	30
合作伙伴	31
搜索合作伙伴	31
我的合作伙伴名单	31
合作伙伴邀请	32
会员	33
会员	33
我的会员计划	33

云存储	34
订购	35
退订	36
账单信息	38
如何添加付款方式	38
如何修改付款方式	40
兑换	41
注册兑换码	41
激活兑换码	42
付款	43
付款详情(诊所&实验室账户)	43
付款账户信息(仅适用于实验室账户)	43
我的信息	44
我的账户	44
我的公司(仅管理员账户)	44
我的扫描仪	44
我的价目表(仅实验室管理员账户)	45
其他菜单	46
公告&更新	46
Medit信息	46
下载Medit Link App	46

Medit Link > Medit Link App

概览	48
Box概览	48
标题栏	50
通知	50
病例同步管理器	51
上传	52
下载	52
网络状态	53
菜单	54
Dashborad	54
Case Box/Work Box	54
Case Box/Work Box中的标签	55
Case Box/Work Box中的功能	55
Order Box/In Box	56
Order Box/In Box中的标签	56
Case Talk	57
App Box	57
Trash Box	58
设置	58
患者管理	58
添加新患者	59
删除患者	59
合并患者	59
公告&更新	60
前往Medit Link网页端	60
Medit信息	60
设置	62
通用	62
存储管理	63
设置时期	63
本地存储	63
云存储	63
设置连接程序	64

导出选项	64
病例转换工具	66
如何使用病例转换工具	66
代理选项	68
产品信息	68
《用户指南》	68
文件浏览器	70
数据树	70
模型控制工具	70
3D模型控制	70
2D图片控制	71
“功能”工具	72
截图与备忘录	72
正畸截图	72
填补缺口	73
修剪	73
优化咬合对齐	76
下颌运动	77
在文件浏览器中管理多咬合数据	78
如何管理多个结果	78
视图选项	80
状态筛选项	80
表头选项	81
视图类型	82
图库视图	83
列表视图	84
分组选项	84
排序选项	85
筛选与搜索	87
按日期搜筛选	87
高级搜索能力	87

Medit Link > 作业流程

创建/编辑/复制/删除病例	89
创建病例	89
在Case Box中创建病例(诊所)	89
在Work Box中创建病例(实验室)	90
编辑病例	90
在Case Box中编辑病例(诊所)	90
在Work Box中编辑病例(实验室)	91
复制病例	91
在Case Box中复制病例(诊所)	91
在Work Box中复制病例(实验室)	92
删除病例	92
删除病例(诊所及实验室)	92
表格信息	93
在Case Box中注册表格信息	93
在表格标签中输入	93
在CAD标签中输入	93
在Work Box中注册表格信息	93
在表格标签中输入	93
在CAD标签中输入	93
将牙齿连接至牙桥	94
设置扫描选项	94
Medit Scan for Labs	94
通用选项	94

按牙齿选择	94
添加至收藏夹	94
添加至收藏夹	95
管理收藏夹模板	95
操作扫描/CAD	96
扫描流程	96
CAD流程	96
获取结果文件	97
导出扫描结果文件	97
导出所选文件	97
导出边缘线	98
将边缘线导出为颜色	99
将边缘线导出为文件	99
将病例列表导出为CSV格式	100
如何导出病例列表	100
从Medit Link网页端下载文件	101
Case Box/Work Box	101
Web Viewer	101
下载方式	102
订购/管理病例	104
您可以通过从连接程序所获取的数据及由用户所附加的数据来轻松地订购病例。	104
订购病例	104
确认订单(In Box)	105
取消订单(Order Box)	105
拒绝订单(In Box)	105
查看已订购的病例	105
输入配送信息(In Box)	106
管理交货日期	106
设置“要求交货日期”(诊所账户)	106
完成病例	108
完成(Work Box/In Box)	108
从“病例详情”页面“完成”病例操作	108
从“病例列表”中完成对多个病例的操作	108
完成(Case Box/Order Box)	109
在Case Box中结束对未订购病例的操作	109
运用标签来交流	111
在创建新病例时添加标签	111
在订购时添加标签	112
查看病例详情上的标签	112

简介

Medit Link

Medit Link是一款旨在促进诊所与实验室之间的交流合作进而为各方提供优化作业流程的协同式工具。

其可基于每个账户的类型及权限来提供差异化的功能。此外，该程序还提供了简单易懂、便于使用的用户界面以让用户能够轻松管理作业流程、通过口内与模型扫描仪进行扫描、订购病例以及设计并制造修复体。

Medit Link包含网页端服务及电脑应用软件(App)。

服务概览

		网页端	App
		- 注册及管理账户 - 搜索 - 搜索及管理合作伙伴 - 运用Web Viewer通过共享链接来共享病例 - 访问从App中所创建的病例 - 管理订单	- 输入表格信息 - 扫描 - 发出/接收订单及付款 - 关联CAD - 管理患者
诊所	管理员	搜索并管理合作伙伴及您的公司、管理付款信息及共享病例。 - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - 合作伙伴 - 会员 - 付款 - 我的信息	输入表格信息、扫描、关联CAD、下订单、付款及管理患者。 - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - 患者管理
	成员	- Case Box - Case Talk - 我的信息	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
实验室	管理员	搜索并管理合作伙伴及您的公司、管理付款信息及共享病例。 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - 合作伙伴 - 会员 - 付款 - 我的信息	输入表格信息、扫描、关联CAD、接收/管理订单。 - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	成员	- Work Box - Case Talk - 我的信息	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 付款

云服务

Medit Link支持通过亚马逊网络服务(AWS)自动上传/下载数据库及文件。

存储在云端的数据将自动与公司内多个用户的计算机实现同步以便其能够随时从任何计算机上访问到该数据。而以云端为基础的备份及恢复功能还可确保您所有数据的安全性。即使在计算机突然发生故障导致数据丢失的情况下, 它也依旧能保证您的数据得到安全保存。

不仅如此, 云服务也可让牙医与实验室之间能够更快速地共享数据, 进而免去了通过电子邮件或手动传输扫描文件所带来的诸多繁琐及不便。所有与患者信息相关的数据均会被安全加密、存储及传输。而且, Medit也会遵守诸如HIPAA与GDPR等医疗法律及法规。

带有订购系统的作业流程管理平台

Medit Link可提供其自己的订购及支付系统。

- Medit Link可让您在牙医与牙科实验室之间创建合同并快速便捷地共享数据。
- 您可以查看并管理订购状态。

以信用卡为支持的系统与像Stripe(www.stripe.com)及I'm Port(<http://www.iamport.kr>)等线上支付平台的支付模块相合作, 使付款服务变得轻松便捷。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 付款

系统配置要求

注意

如您想通过您的扫描仪来使用扫描软件，则请参考Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs的系统配置要求。

Windows的系统配置要求

	笔记本电脑&台式电脑
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz或更高
内存	16GB或更高
显卡	NVIDIA GeForce GT 760 (2GB)或更高/或等同于AMD显卡
操作系统	Windows 8 64位(不可用于32位)或更高

macOS的系统配置要求

	Mac
处理器	配备8核GPU、7核GPU、16核Neural Engine的M1
内存	16GB或更高
操作系统	Monterey 12

网页端服务的系统要求

推荐浏览器

	浏览器
电脑端	Chrome、Firefox、Safari、Edge (Chromium)
Android	Chrome、Firefox
iOS	Safari、Chrome、Firefox


移动设备的最低系统要求

类型	Android	iOS
设备	相当于Galaxy S7或更高	相当于iPhone 7或更高
操作系统	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
内存	3GB或更高	2GB或更高
应用处理器	Snapdragon 710以上	A10 Fusion


在Windows上安装

Medit Link将与扫描获取程序——Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs——以安装包的形式被一并安装。


1. 运行Medit_LinkSetup.exe。
2. 选择用于安装的语言。
3. 选择安装Medit Link的文件夹。请阅读并同意《许可条款及条件》并点击“安装”。

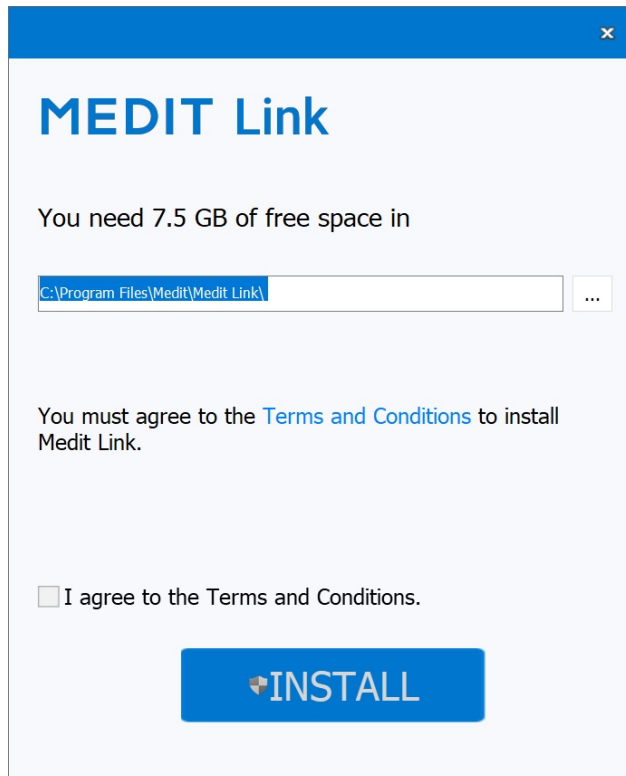

4. 请确保在进入下一步前将扫描仪线缆从电脑端断开。如扫描仪已连接至您的电脑端, 那么安装将无法进行。
5. 程序将自动安装并可能需要几分钟的时间。切勿在安装完成前关闭您的电脑或拔掉电源插头。

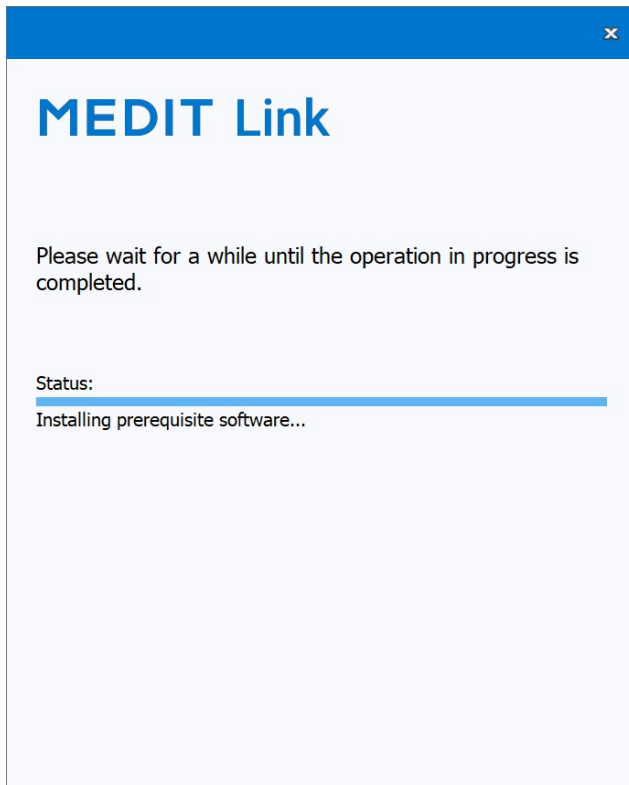

6. 请在安装完成后重启您的电脑。如您没有扫描仪, 则您便无需重启电脑。

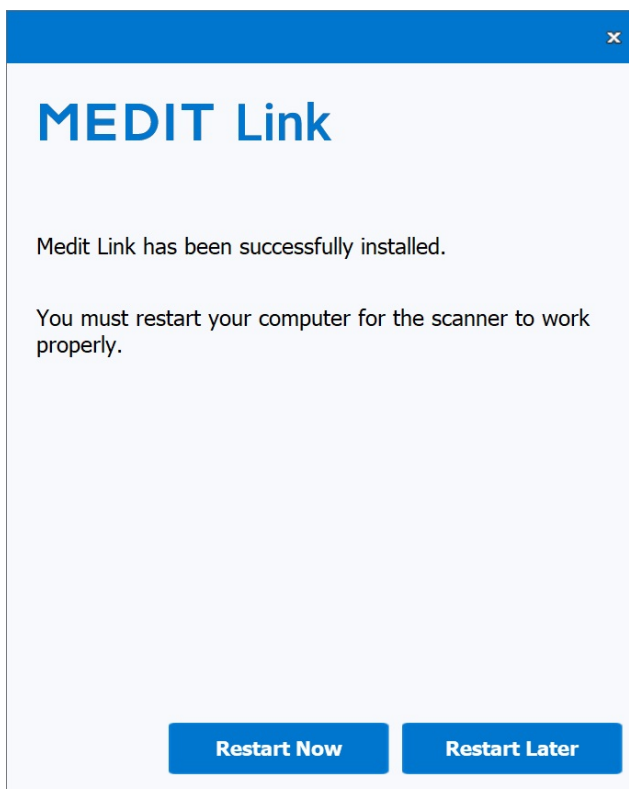


注意

如您在安装完成后不重启您的电脑, 则扫描仪的功能可以无法正常运行。


在macOS上安装

Medit Link将与Medit Scan for Clinics以安装包的形式被一并安装。


1. 运行Medit_Link_x.x.x.pkg并点击“继续”。

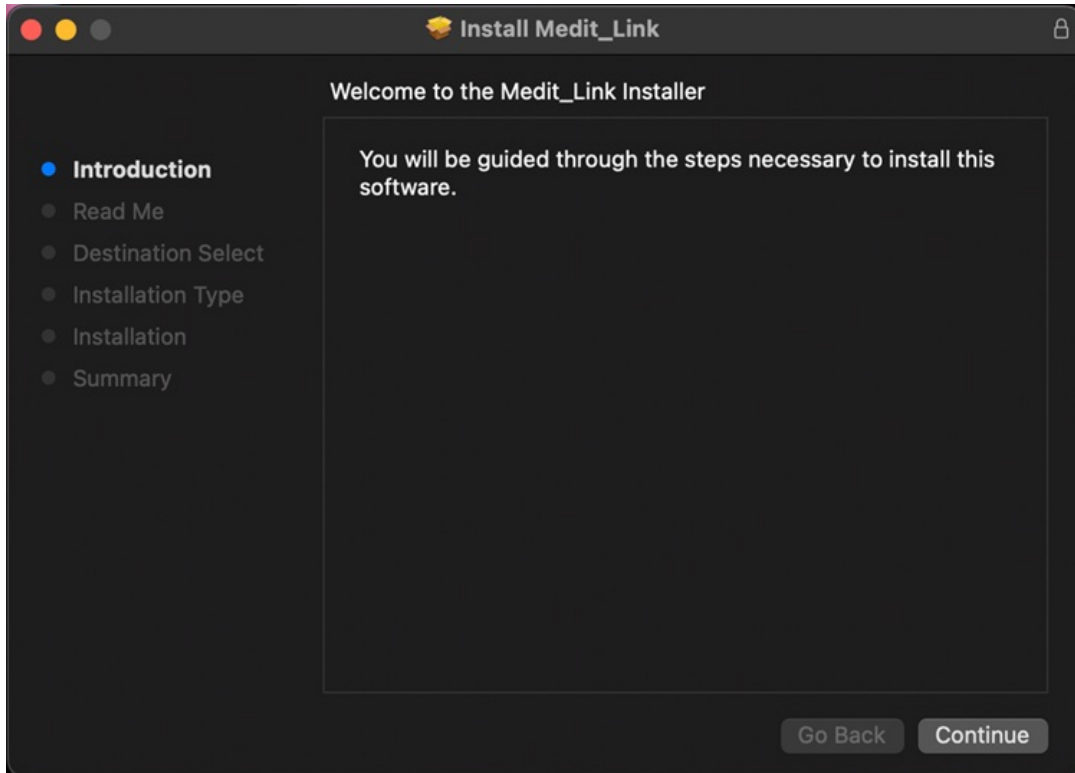


2. 阅读《终端用户许可协议》并点击“继续”。

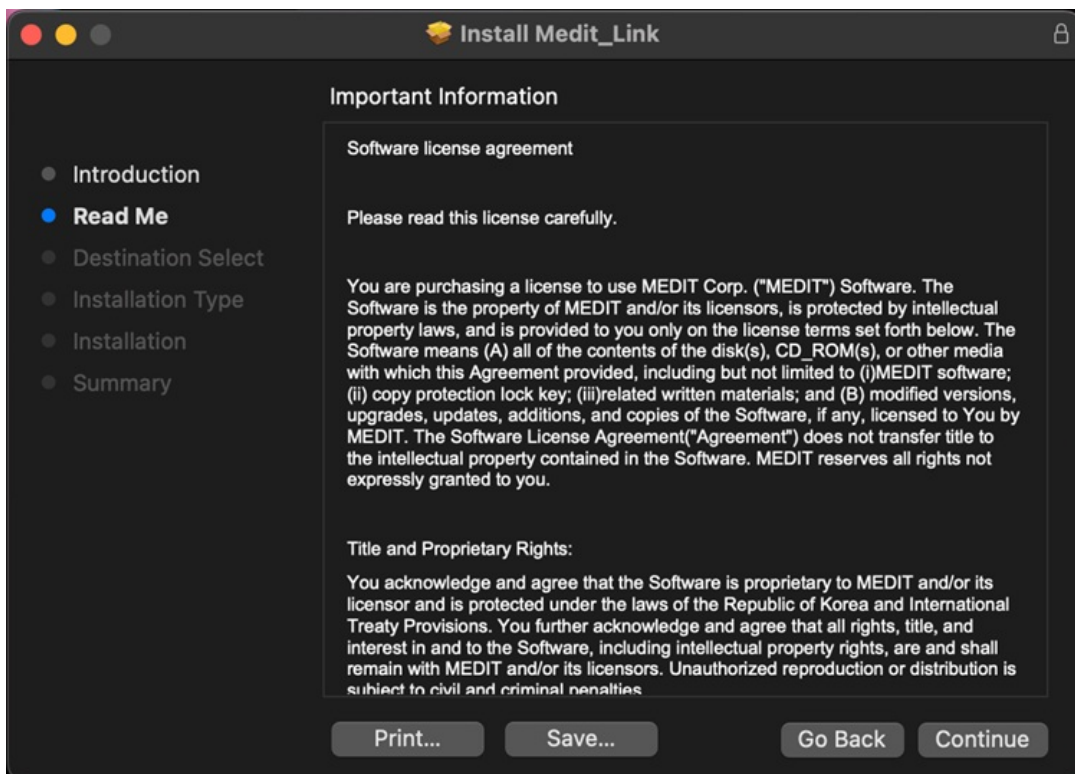

3. 选择要安装到的磁盘并点击“继续”。

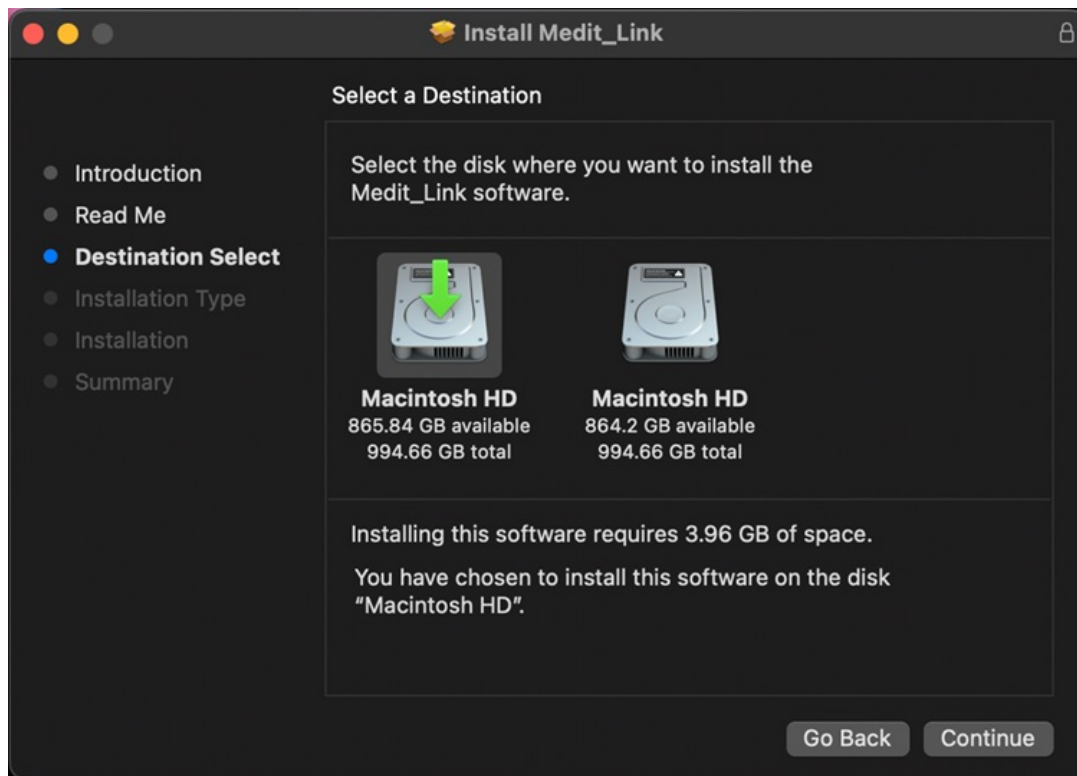


4. 点击“修改安装位置...”即可修改安装的相应位置。

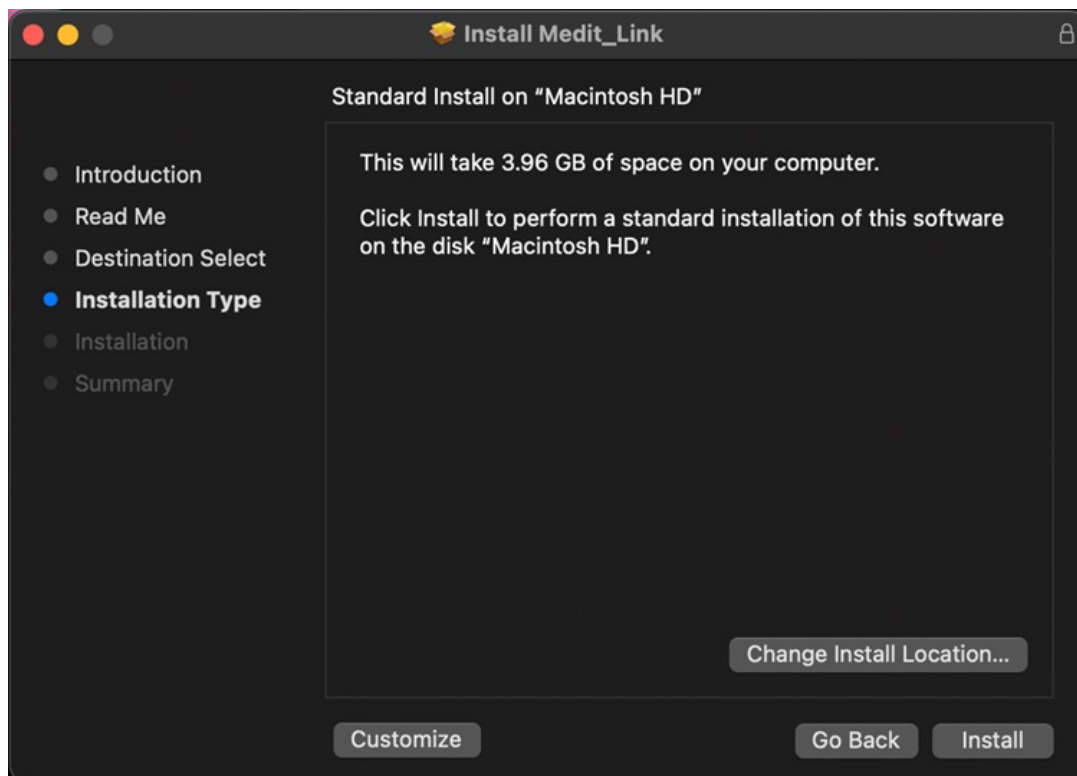


5. 点击“安装”并在要求时输入您的Mac密码来授权安装。




6. 稍等片刻直至安装完成。

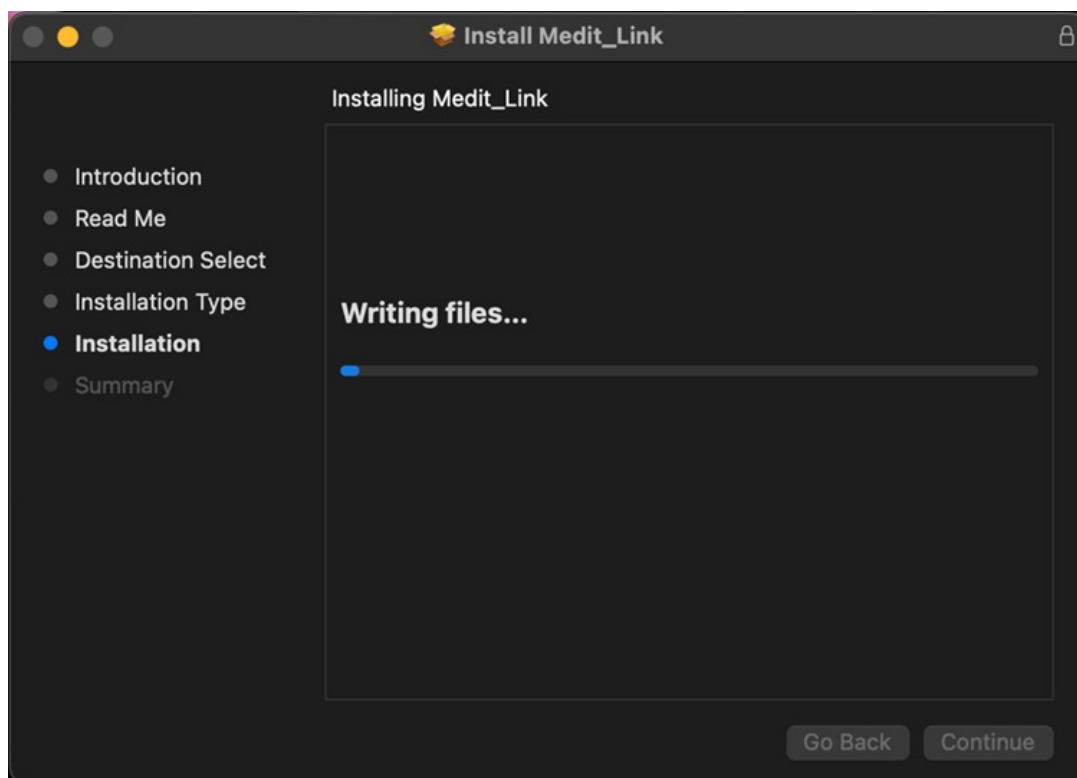

7. 点击“关闭”即可退出安装窗口。

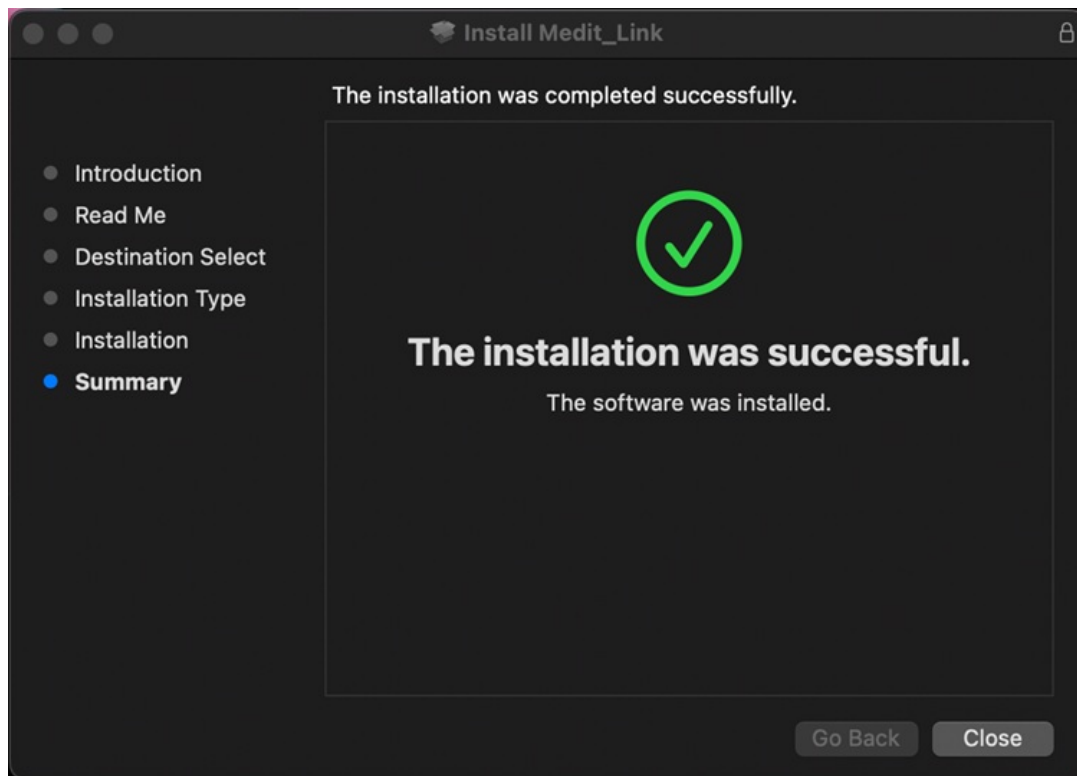

概览

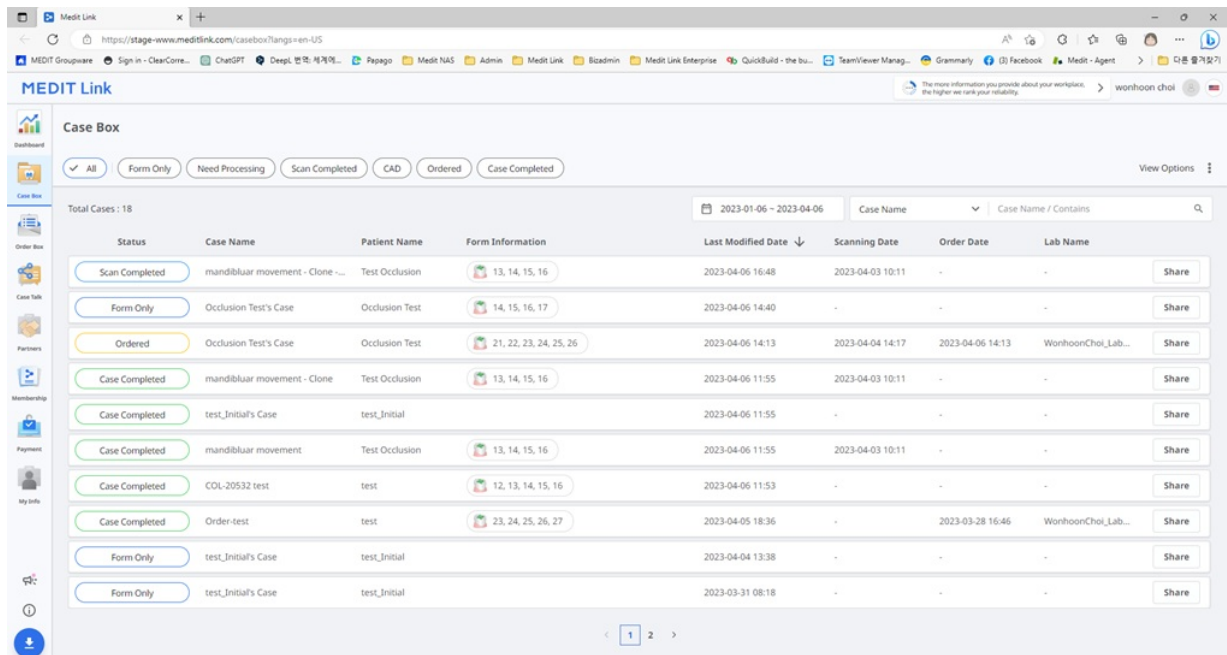


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link application. The interface includes a sidebar with navigation icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area shows a list of cases with the following columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. The cases are filtered by 'All' status, and the date range is set to '2023-01-06 ~ 2023-04-06'. The table contains 10 rows of case data, each with a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
Scan Completed	mandibular movement - Clone -...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-

Dashboard

Dashboard概览

您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

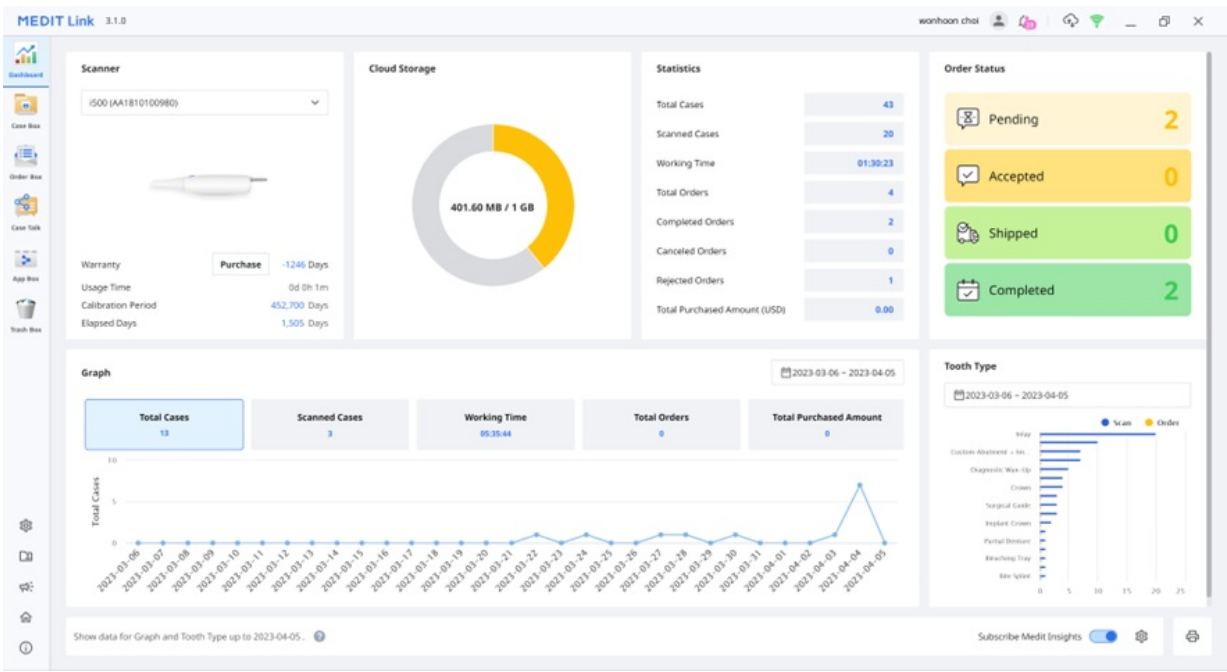

Dashboard中的图表可显示您在Medit Link中所完成的全部工作的统计数据。

扫描仪	提供当前所使用扫描仪的相关信息, 包括保修期、扫描仪使用时间、校准间隔及校准经过时间。
云存储	显示云端存储的总容量及当前使用量。
统计数据	基于工作状态提供病例的相关统计数据。
订单状态	基于订单状态提供病例的相关统计数据
图表	按时段显示工作信息。
牙齿类型	通过治疗信息提供有关扫描与订单数量的统计数据。


Medit Insights

Medit Insights旨在为您提供相关的报告服务并以此来帮助您分析您在Medit的使用情况统计数据。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

• Medit Insights

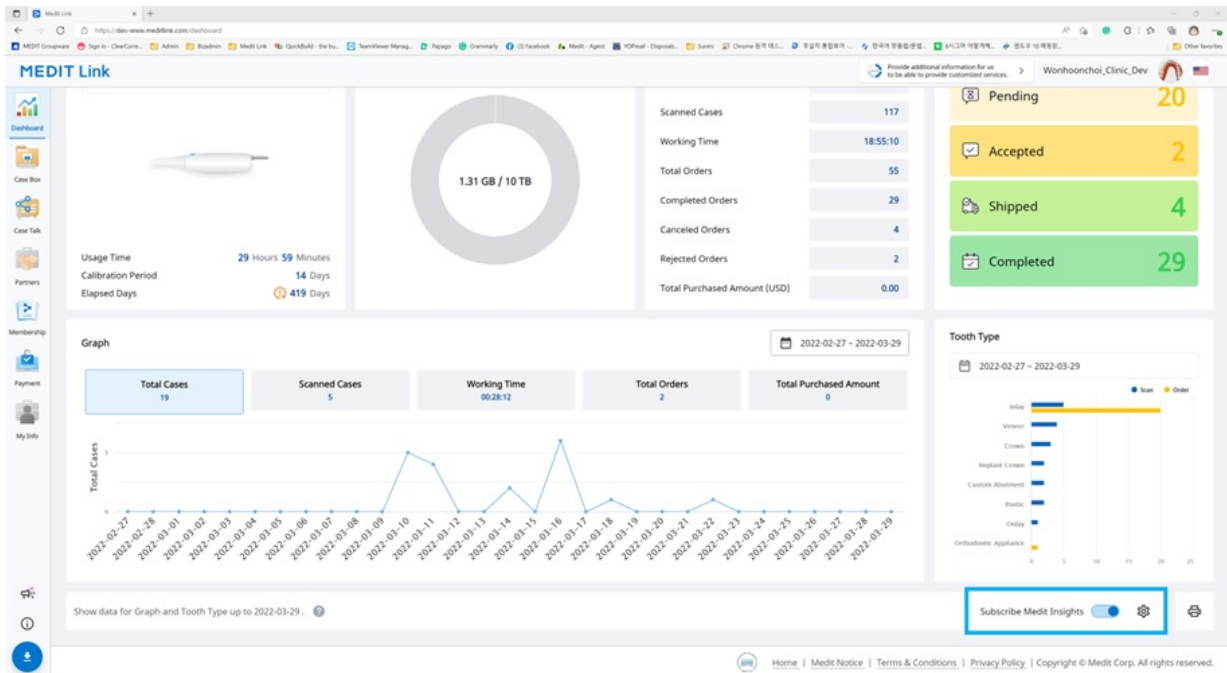

订阅Medit Insights

您可以在每个月的第2天收到一封包含统计报告的电子邮件。无需任何附加的注册过程。只需开启“订阅Medit Insights”选项即可。

如您不想使用您注册Medit Link账户时所使用的电子邮箱地址，那么您可以设置另一个电子邮箱地址来接收Medit Insights的报告。

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

您将在每个月的第2天收到包含如下图所示的统计数据的电子邮件。

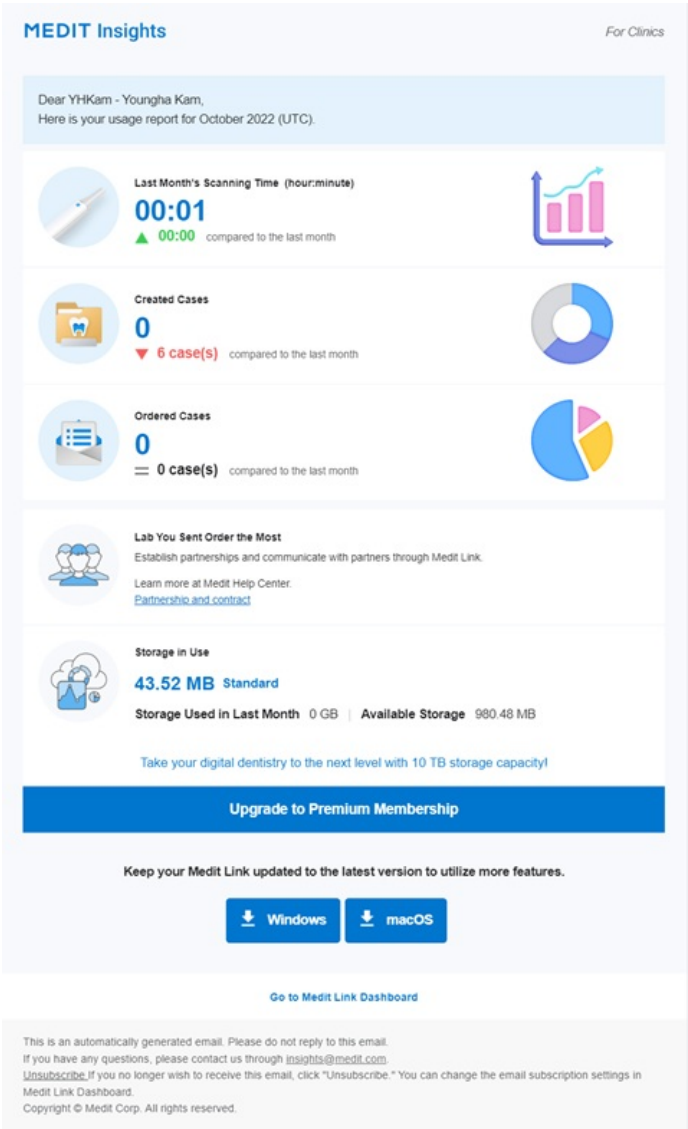


标题栏	Medit将在此处提供一些实用的提示及信息。 * 如您不想看到这一标题栏，则请在“我的信息” > “我的账户”中取消对“营销及推广协议”的勾选。
统计数据信息	可显示诸如扫描时间、创建病例数以及订购量最大的实验室等统计数据信息。
Medit Link下载	可提供Medit Link的下载链接。
Dashboard	所有统计数据信息均基于您的Dashboard信息。您可以在Dashboard中了解更多详情。

退订Medit Insights

在Dashboard中关闭“订阅Medit Insights”或在收到的电子邮件中点击“退订”。

Case Box/Work Box


Case Box(诊所)或Work Box(实验室)可显示用户在Medit Link应用程序中所创建的所有病例。同时,您还可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer来查看文件。

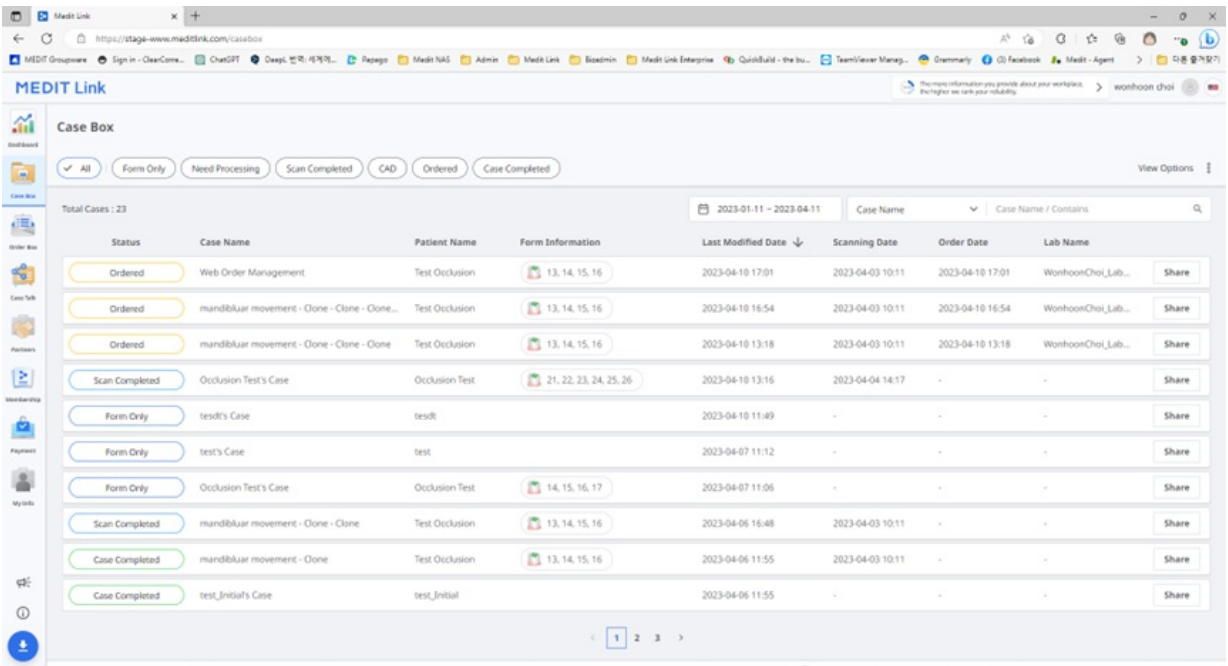

病例筛选

按状态筛选

您可以基于状态来筛选病例。

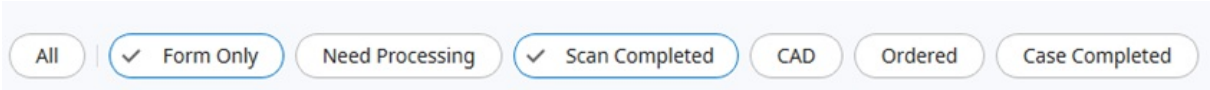

- 用户可以点击其想要查看的状态。浏览器将仅显示所选状态中的病例。
- 用户可以一次性选择多个状态。

程序将基于账户类型来提供下列状态类型:

Case Box(诊所)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box(实验室)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

按时间段筛选

您可筛选并显示在您设置的时间段内进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。



2. 选择时间范围。

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- 全部:显示全部病例。
- 自定义时间范围:指定对病例进行过修改的起始及结束日期。
- 当天:显示在当天进行过最后一次修改的病例。
- 昨天:显示在昨天进行过最后一次修改的病例。
- 最近7天:显示除当天外在最近7天进行过最后一次修改的病例。
- 最近30天:显示除当天外在最近30天进行过最后一次修改的病例。
- 最近90天:显示除当天外在最近90天进行过最后一次修改的病例。
- 本月:显示本月的病例。
- 上个月:显示上一个月的病例。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

通过搜索筛选

您可以利用搜索能力来快速便捷地搜索所需的信息。

Case Name


Case Name / Contains

Q

基于诊所/实验室账户的搜索选项如下所示：

Case Box(诊所)	病例名称、患者姓名、患者编号、实验室名称
Work Box(实验室)	病例名称、患者姓名、诊所名称、订单编号

病例详情

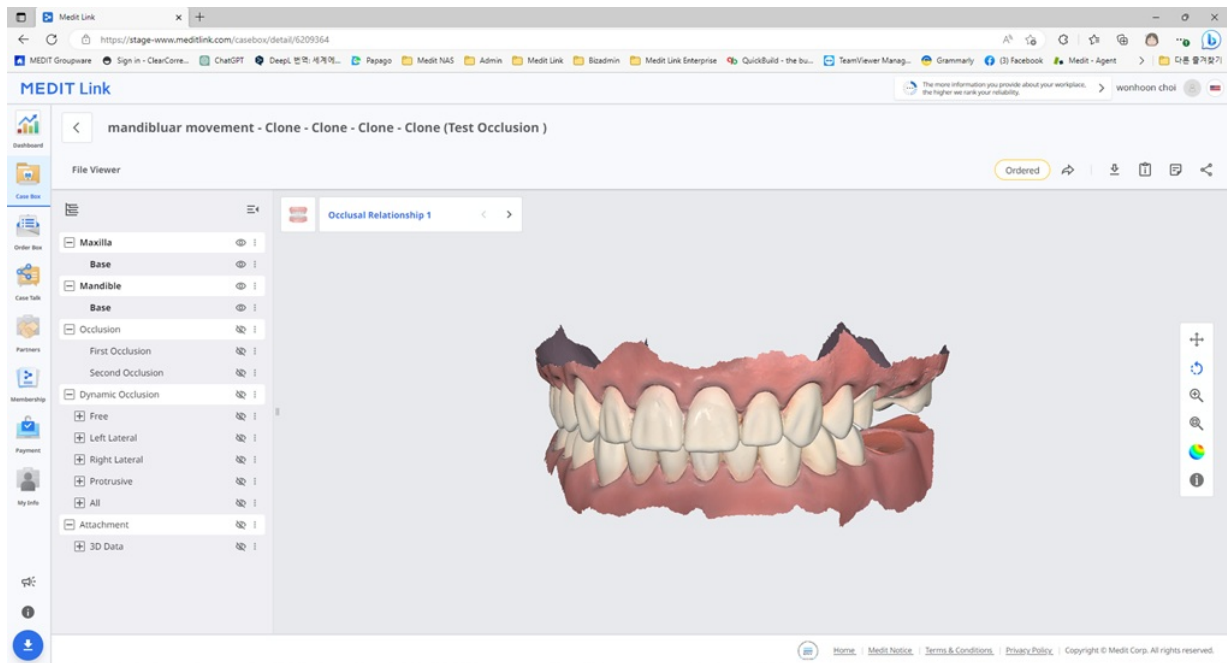


Case Box/Work Box中提供下列病例管理工具。

	病例状态	可显示病例的状态。
	转至“详情”	可在另一个Box中为同一病例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box)。
	下载	可将病例的文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。
	共享	可创建一条用于共享的链接。 获得共享链接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如Chrome、Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。 你可以随意地与任何人共享链接或只与特定的人共享链接。您还可以设置逾期日期的PIN码或链接来确保私人信息的安全。

Order Box/In Box

Order Box(诊所)或In Box(实验室)可显示用户在Medit Link应用程序中所订购的病例。

订单详情

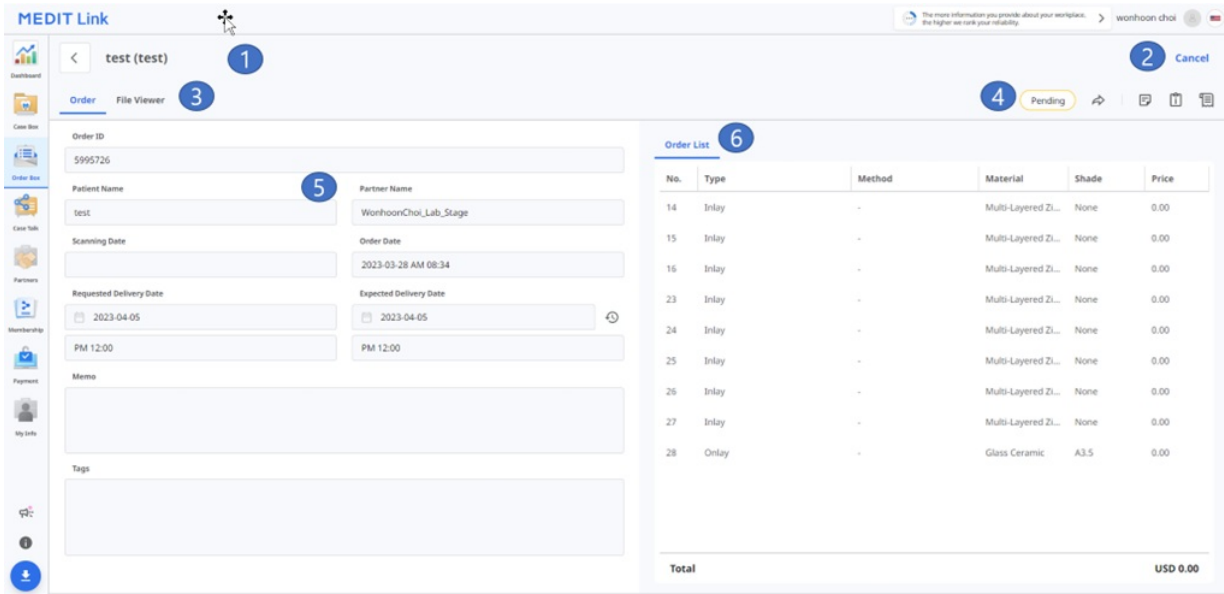

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供进行订单管理的相关功能(接受/取消;交货/收货)。
3	显示可供使用的标签:订单及文件浏览器。
4	可显示管理病例及文件的共享:病例状态、详情的快捷键、病例信息、备忘录&标签等
5	显示包括订单号、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录&标签等订单的详细信息。
6	显示订购产品的信息及发货状态。


Order Box/In Box中的标签

订单	文件浏览器
可查看诸如订单编号、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录及标签等订单的详细信息。	可查看扫描/CAD操作所生成的文件。文件浏览器可显示并管理程序所获取或附加的3D模型及2D图片。

Case Talk

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册成员所共享。

用户可以在Medit Link应用程序及Medit Link网页端中通过"Case Talk"查看所有共享病例的列表。

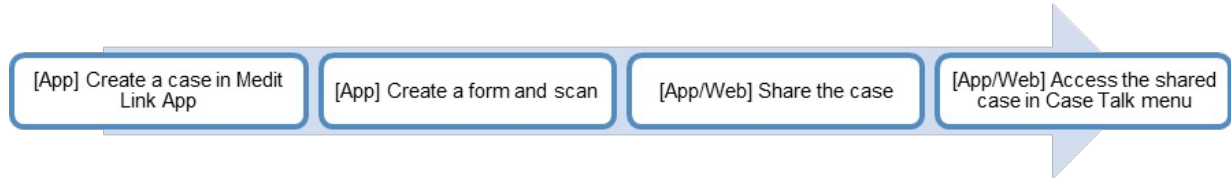


用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。


创建Case Talk

您可向在Case Box/Work Box中所创建的病例创建共享链接。

1. 找到您要共享的病例并点击右侧的“共享”按钮。

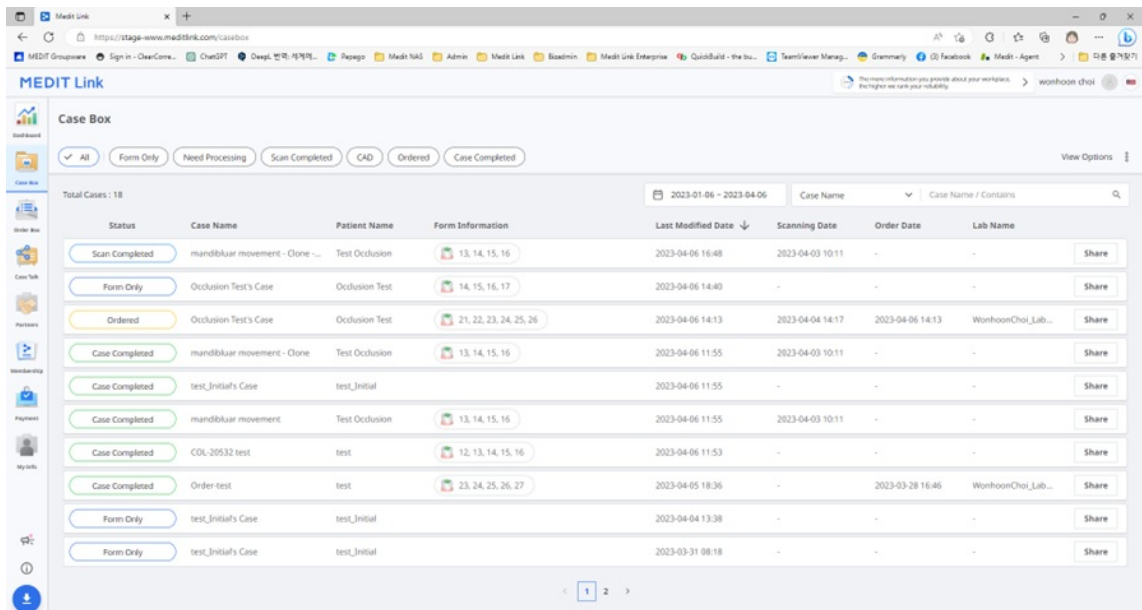

2. 选择您想共享的文件。

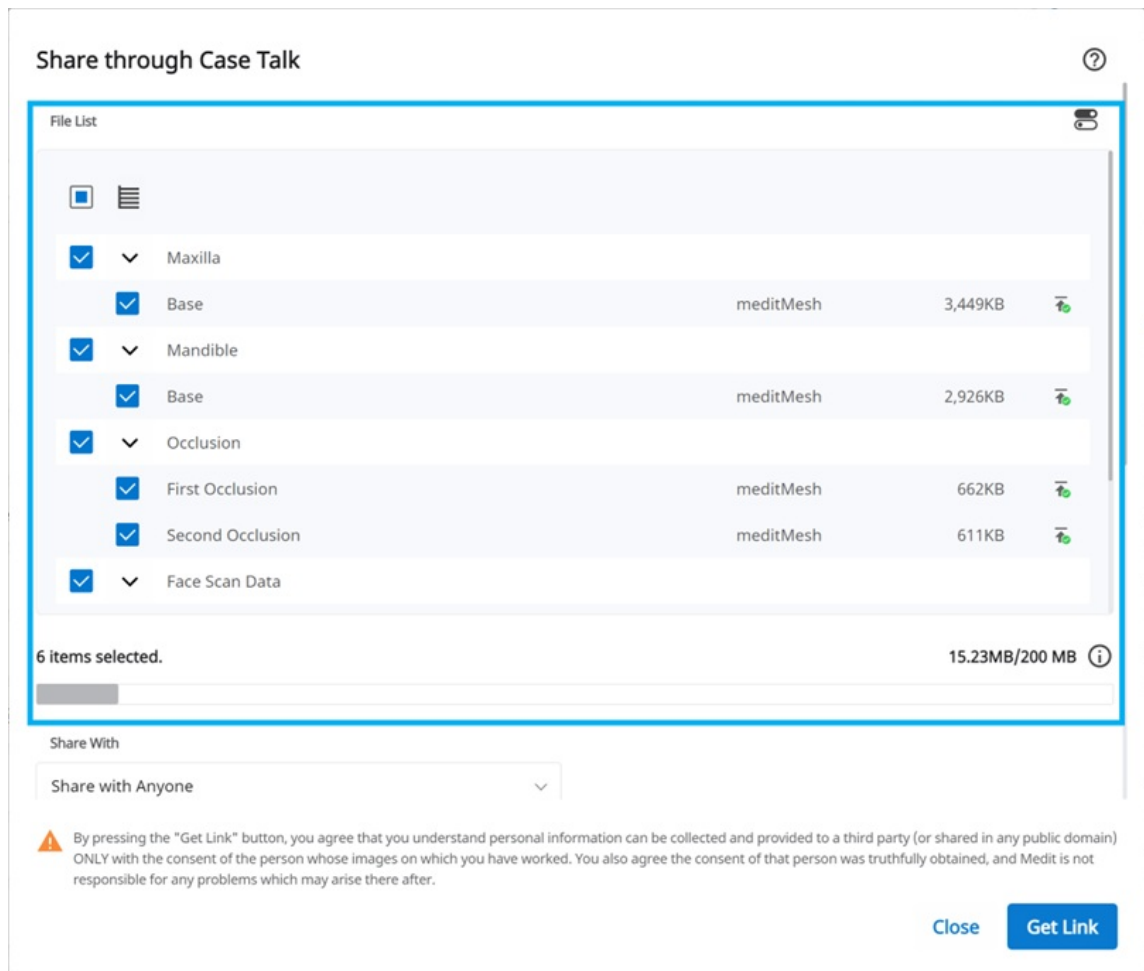

3. 设置共享权限类型与共享选项。
4. 点击“生成链接”即可创建共享连接。

设置共享权限类型与共享选项

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

Share via

PIN Code

☐ PIN Code


Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

共享人	- 与任何人进行共享 创建一条共享链接。您可以与任何人共享相应的文件。 - 与特定的人共享 创建共享链接并将发送至特定的人。
分享方式	如您选择“与特定的人共享”，那么您可以通过多种方式与其共享链接。 - 电子邮箱地址 - SMS - 合作伙伴
逾期日期	可设置链接的逾期日期。在链接逾期后，您与之共享链接的人将无法再访问文件。您可以将逾期时间延长最多90日（从当天算起）。
PIN码	可设置一个6位数的密码以确保数据的安全。
共享患者姓名	如您勾选该选项，那么拥有该链接的所有人便均可以看到患者的姓名。
授权下载权限	如您勾选该选项，那么拥有该链接的所有用户便均可以下载相应的文件。
允许留言	- 如您选择该选项，那么您便可以通过共享链接来进行交流。 - 如您取消勾选该选项，那么链接的接收者便只能查看您的留言，无法添加其自己的留言。
留言	您可以在“留言区”输入您的留言内容。

Case Talk详情

您可以在共享病例中查看相应的文件。“Case Talk详情”页面提供如下功能。

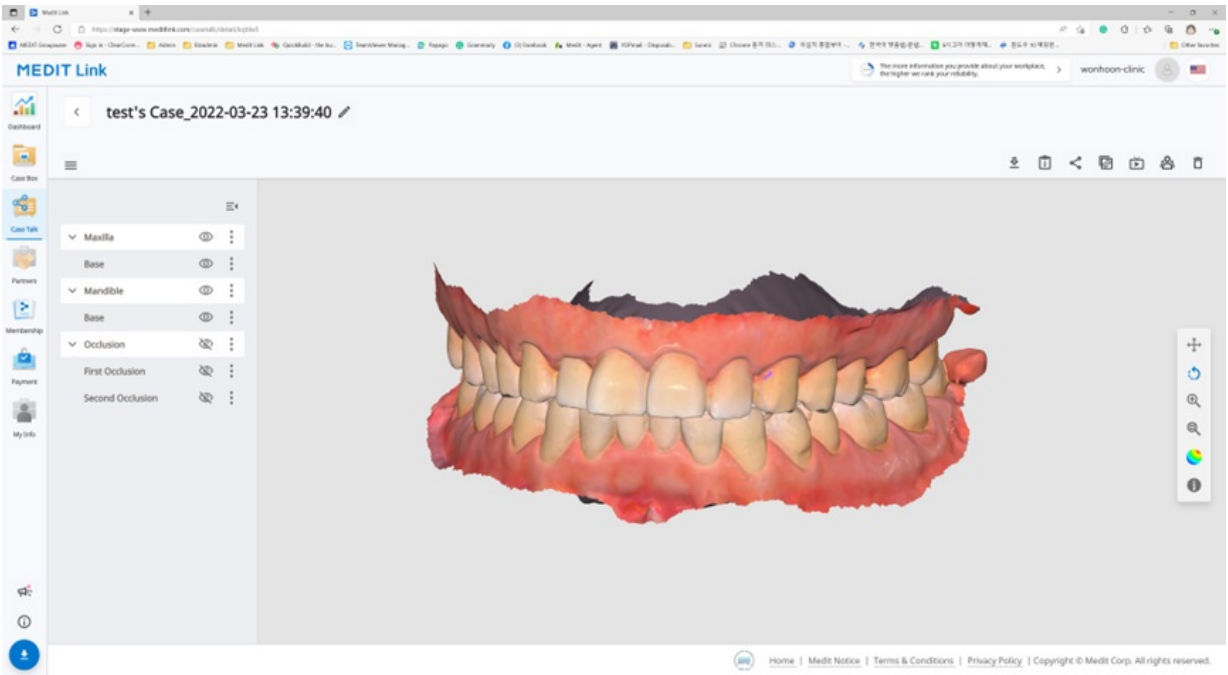

	下载	可将该病例的所有文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	可修改共享设置。
	复制链接	可将共享链接复制到剪贴板。复制的链接可将共享文件显示在网络浏览器上。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	删除	可删除共享链接。被删除的共享链接将无法再进行访问。

注意


下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

Web Viewer

您可以在网络浏览器中通过Case Talk查看所共享的数据。

还可与有权访问链接的人通过注释及留言来进行沟通交流。

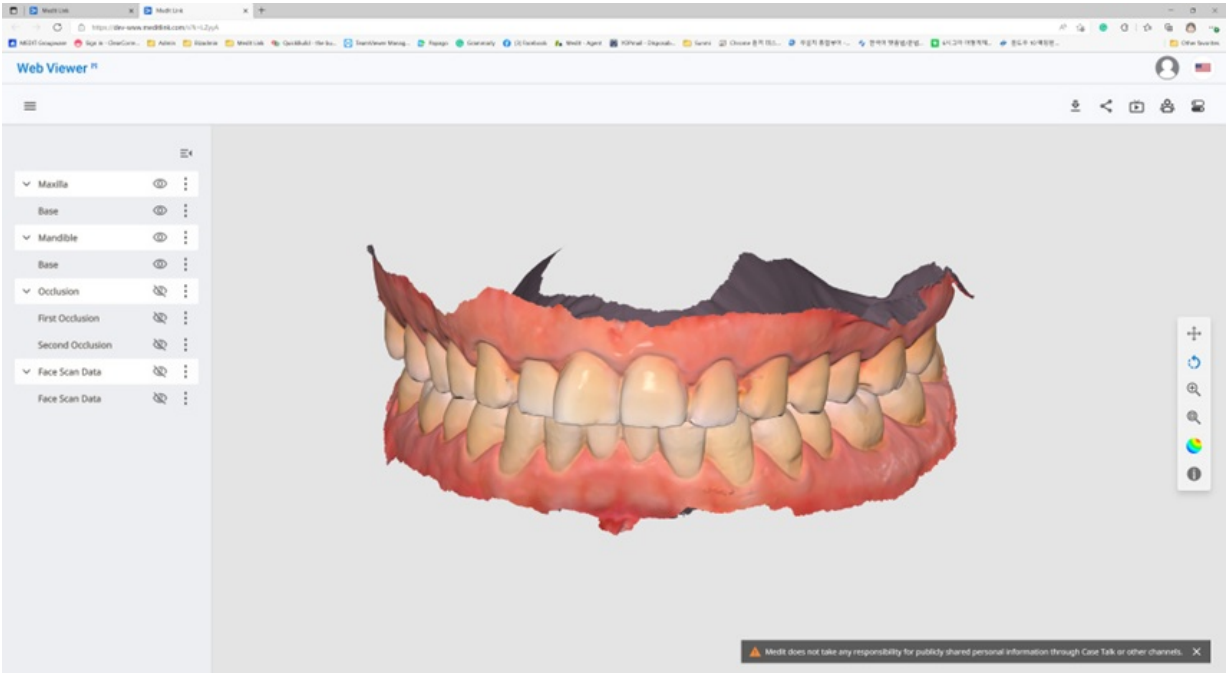

	下载	可将该病例的所有文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	可修改共享设置。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	牙齿标记	可修改牙齿标记系统。


注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

注释

您可以在3D模型的特定位置上添加注释。拥有该链接的任何人均可查看您添加的注释。

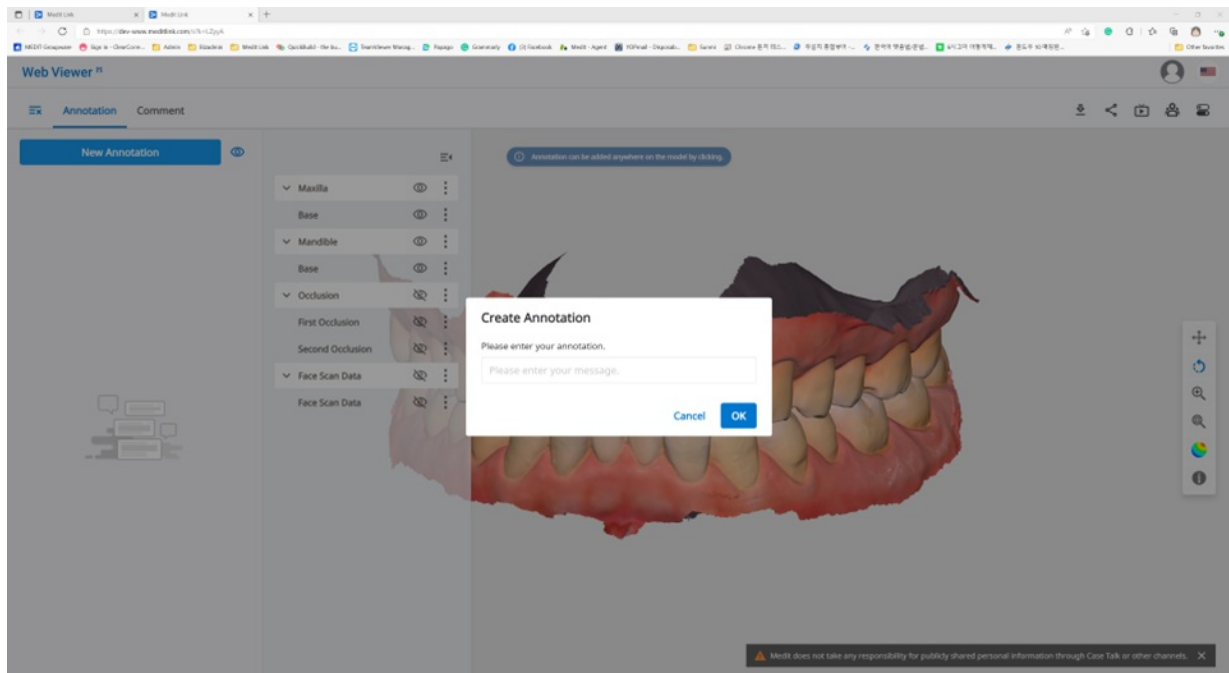

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 注释

1. 找到左上角的“菜单”图标并选择“注释”标签。使用“新注释”按钮只需点击一下便可在数据的任何地方上添加注释。
2. 输入注释内容并点击“OK”来将其保存。

This is a detailed view of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title bar 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. 您可以将“注释”作为一个简单的交流渠道。
点击所创建的注释来输入回复内容并点击“发送”即可。

This screenshot shows the interface for replying to an annotation. At the top, it shows the user's name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and a trash icon. Below is the title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

留言

您可以在“Web Viewer”菜单中通过“留言”标签来与拥有链接的用户进行沟通交流。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 留言

实时屏幕共享


可实时共享您的屏幕。

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享

1. 点击“实时屏幕共享”与所连接的用户共享您的Web Viewer屏幕。


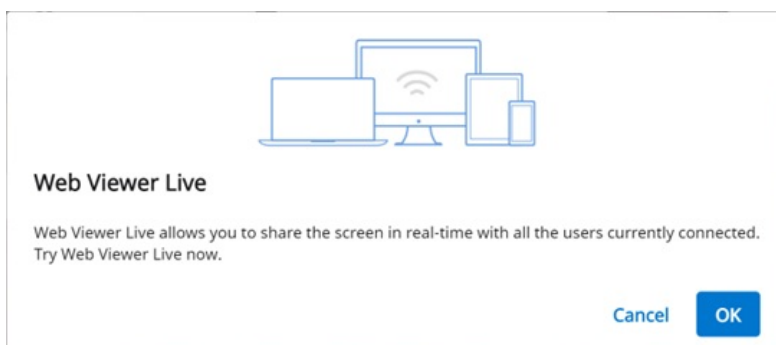


2. 点击“OK”开始共享您的屏幕。
3. 可访问链接的其他人须接受“屏幕共享”。
4. 发起“屏幕共享”的用户的电脑屏幕将与收到请求的人的电脑屏幕实现同步化。





数据树

所有数据均将根据数据树中的属性来进行分组及显示。您可以选择“显示或隐藏数据”，“调整不透明度”等操作。

“数据树”控制

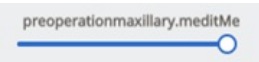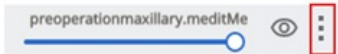显示/隐藏	可点击“眼睛”图标来显示或隐藏视图中的数据。还可按照组别或单独文件来控制数据的可视性。
不透明度	将鼠标悬停在可见的区域上可看到不透明度的滑杆条。调整滑杆条即可修改您数据的透明度。 
扩展菜单	扩展菜单会显示在每个“数据树”区域的右侧。其包含如下选项：  • 仅显示此：隐藏除当前数据外的所有数据。 • 隐藏：隐藏当前数据。 • 复制：复制当前病例中的数据。 • 导出：将数据保存至本地电脑端。 • 删除：删除当前的数据或数据组。

3D模型控制

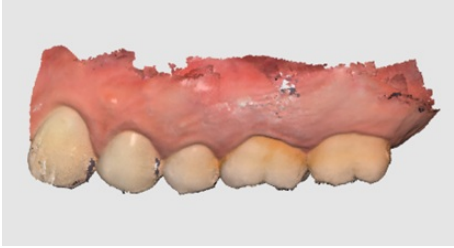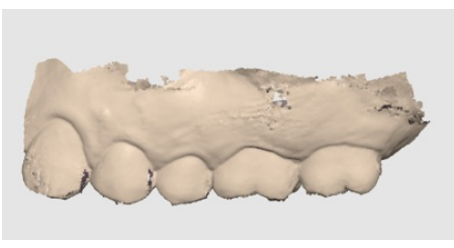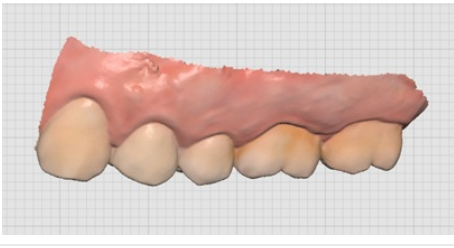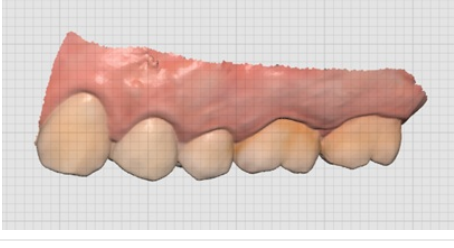	平移		可移动模型。
	旋转		可旋转模型。
	放大/缩小		可放大或缩小模型。
	全屏显示		可将模型置于屏幕中央。
	模型显示模式	纹理开启	可以真实的纹理颜色来显示数据。 
		纹理关闭	可以单一的颜色的来显示数据。 
	网格设置 (mm)	网格开启	可在背景里显示网格。 
		覆盖开启	可将网格覆盖在模型上。 
		网格关闭	可隐藏网格。

合作伙伴

您可以搜索潜在的合作伙伴来申请建立合作关系并查看当前的合作伙伴及已签订合同的合作伙伴的名单。


注意

使用Google地图的相关服务不可用于Medit Link China。

搜索合作伙伴

您可以基于公司名称及/或地址来搜索Medit Link的用户。

在搜索结果中，您可以向您心仪的公司发送建立合作关系的申请。

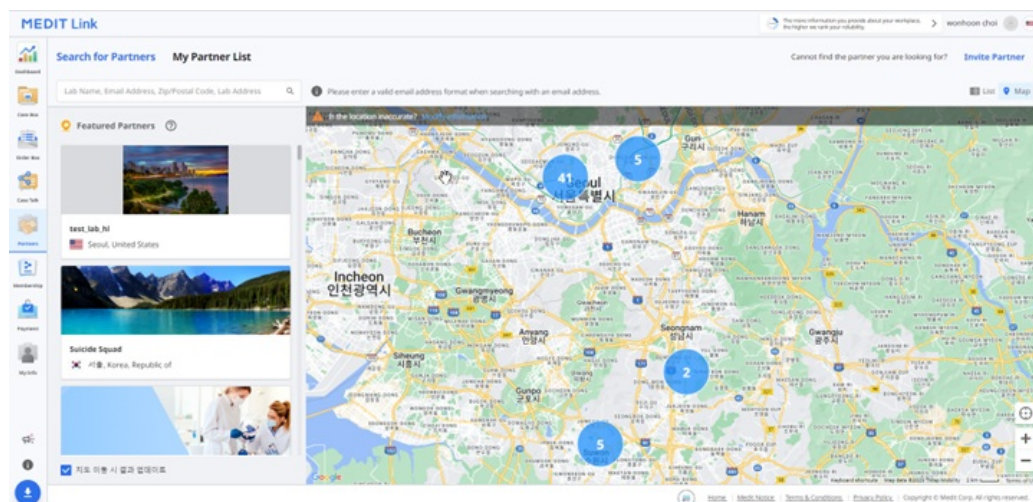


我的合作伙伴名单

您可以在“我的合作伙伴名单”中查看您当前的合作关系以及与所有现有的合作伙伴企业所签订的合同。

合同与合作关系有何不同？

如您与某个企业建立了合作关系，那么您便可以申请与该企业签订合同。

- 如您的合作伙伴接受了您有关签订合同的申请，那么您便可以为所发出的订单进行付款。

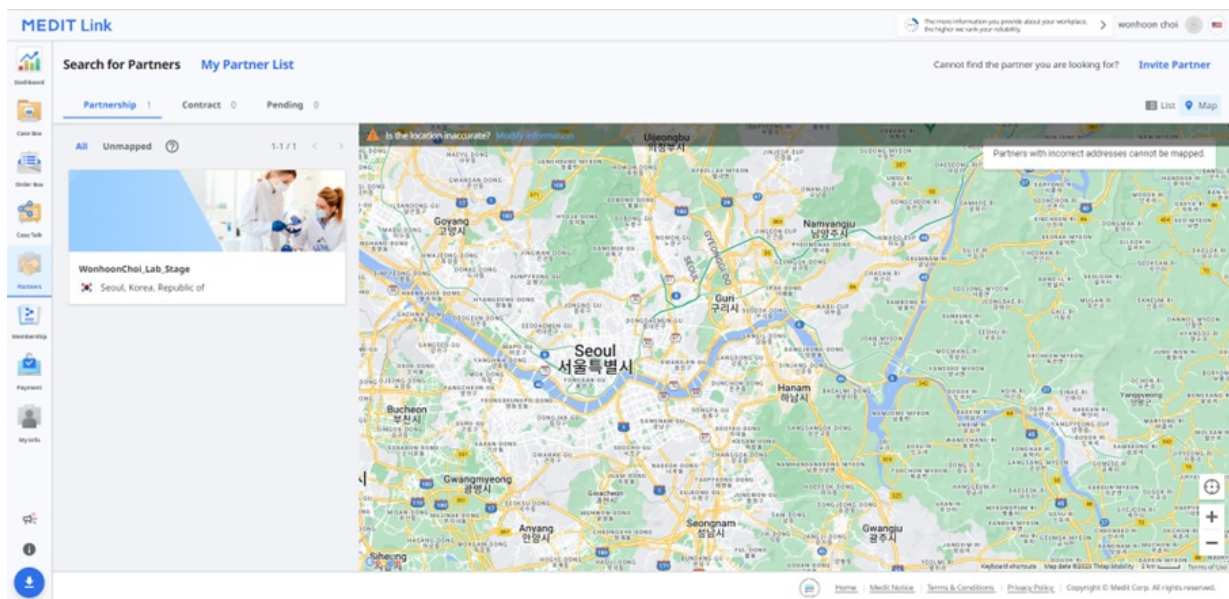

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 合同

合作伙伴邀请

如您有想要与之合作的公司，那么您可以邀请其加入Medit Link中。一旦其接受了邀请，则合作关系将随之自动建立。

1. 点击屏幕左上角的“邀请合作伙伴”。
2. 输入您想要与之合作的公司的电子邮箱地址并向其发送一封带有合作关系申请的邀请函。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. 一旦被邀请的公司接受了邀请并注册了Medit Link，则合作关系将随之自动建立。

会员

Medit Link所制定的会员政策旨在为用户打造一个更为广阔的数字化环境，进而逐步扩展至基于云平台来提供各种服务。

我们致力于通过新修订的会员政策来为我们的顾客提供一个更为持续且个性化的体验。

目前，共有两种会员计划可供选择：

Standard

- 所有已注册用户均可使用的免费会员计划
- 提供1GB的云存储空间
- 适用于新用户

Premium


- 付费会员计划
- 提供10GB的云存储空间
- 适用于拥有众多病例及各种数据的用户。
- 享有1个月的免费使用期

	Standard	Premium
云存储	1GB	10TB
每月费用	免费	\$0.99/月
* 云存储不包含原始数据所占用的空间。		

注意


上述会员计划同样适用于Medit Link China。您可以免费使用Premium会员计划直至相应功能的正式发布。

会员

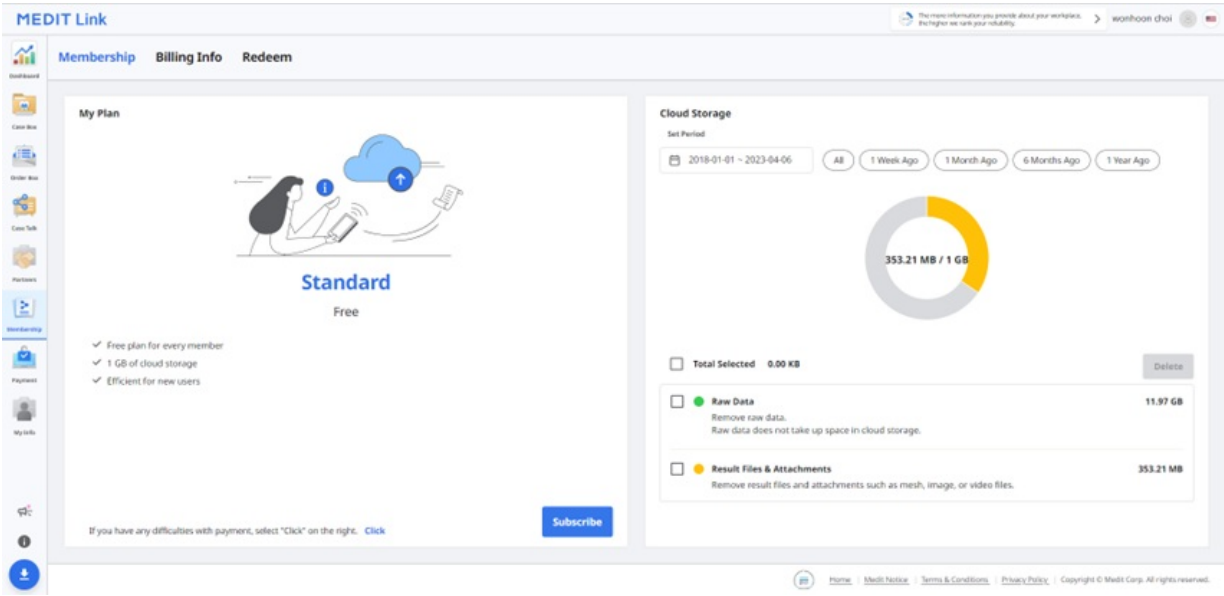


我的会员计划

您可以在左侧区域中看到您当前所拥有的会员计划。您也可以随时在这里修改您的会员订购状态。

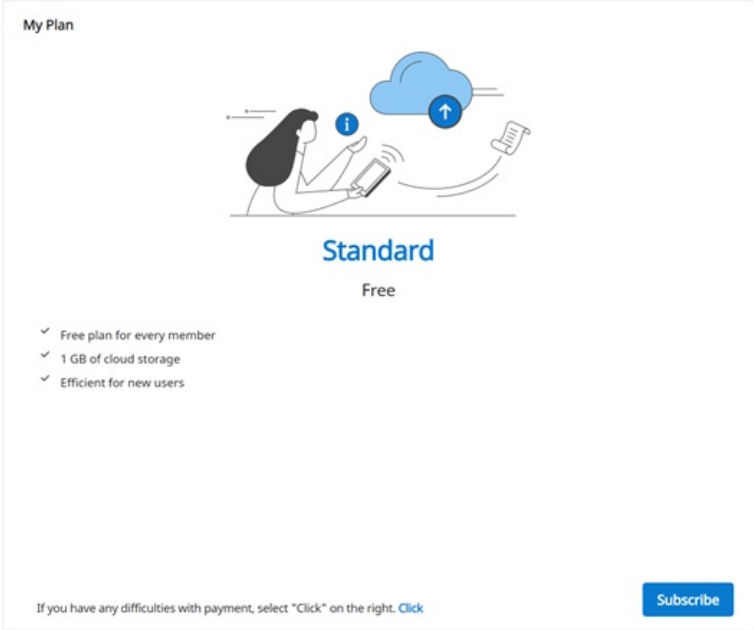

云存储

您可以在右侧区域中管理您的云存储。

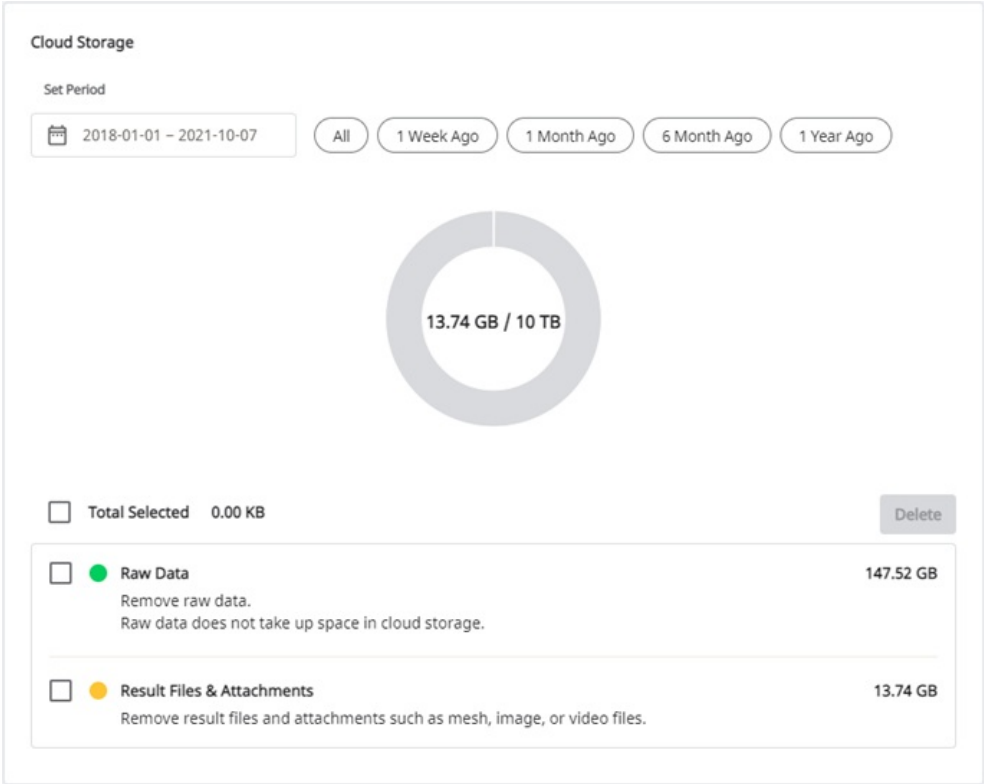

设置时期	可设置特定的时期来删除该时期内所创建的数据。 - 全部: 查看全部文件。 1周前: 查看创建后1周内的文件。 1个月前: 查看创建后1个月内的文件。 6个月前: 查看创建后6个月内的文件。 1年前: 查看创建后1年内的文件。
原始数据	由于原始数据不占用云存储的空间, 因而其不会出现在饼状图中。但是您可以根据需要在这里管理原始数据, 如将其删除以保护患者的隐私信息等。
结果文件&附件	结果文件及附件将占用云存储空间。如云存储空间已满, 那么您可以通过清理多余文件来释放更多的空间容量。

删除


可通过清理在云存储空间中所选择的文件来释放空间容量。

订购


无论您现在正在使用Standard计划还是通过兑换码兑换了Premium计划，您均可订购Premium会员计划。

付款将通过Stripe服务来完成(www.stripe.com)。

1. 点击“订购”按钮。

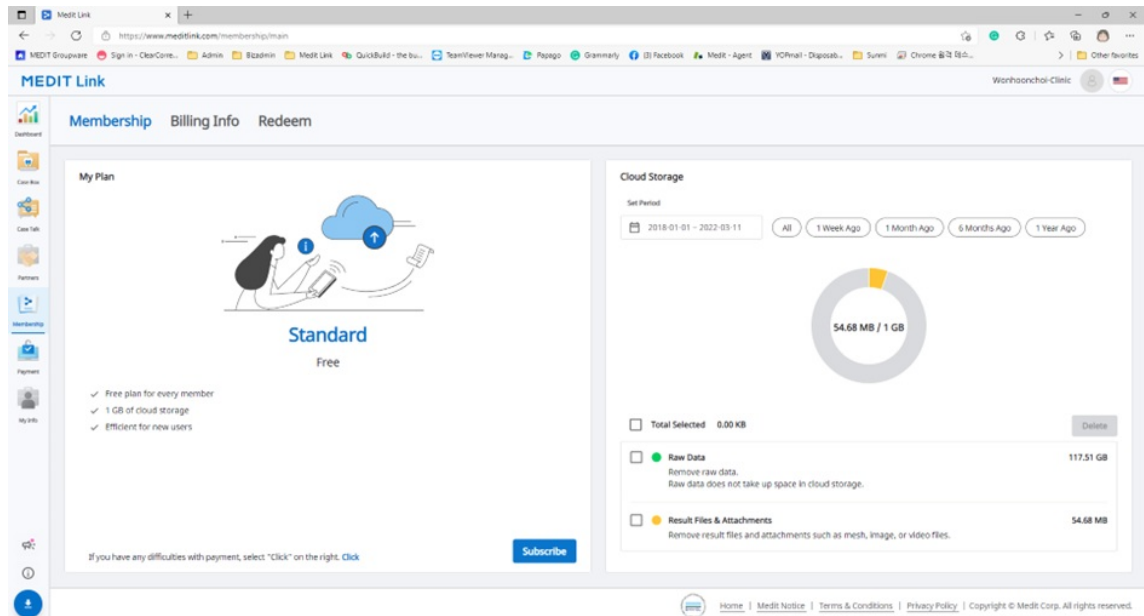

2. 查看Premium会员计划的说明并再次点击“订购”。

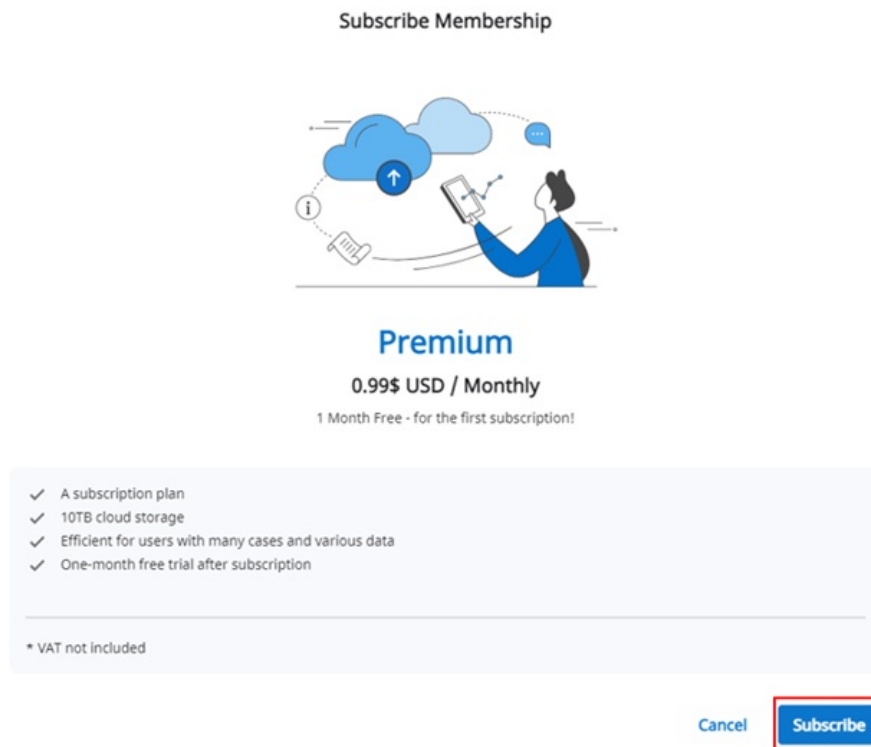

3. 了解价格及相关条件并输入付款所需的信息。随后，点击“订购”。

← MEDIT Link

TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic

\$0.99

Billed daily

Subtotal

\$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription

100% off for a day

-\$0.99

Total due today

\$0.00

Powered by stripe

Terms

Privacy

Pay with card

Email

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Name on card

Country or region

South Korea

Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. 付款往往需几秒钟的时间。在付款完成后，您将随之看到确认信息。

Subscribe Membership

Payment Successful.


Invoice Close

退订


您可以随时退订您的会员计划。在退订后，您依旧可以在剩余的会员期内使用Premium会员计划。从下一个付款日开始，您的会员计划将随即变为Standard，而云存储空间的限额也将变回1GB。如超过该限额，则您便将无法对文件进行备份，同时也不能使用“订购”及“共享”功能。

1. 点击“退订”。

36

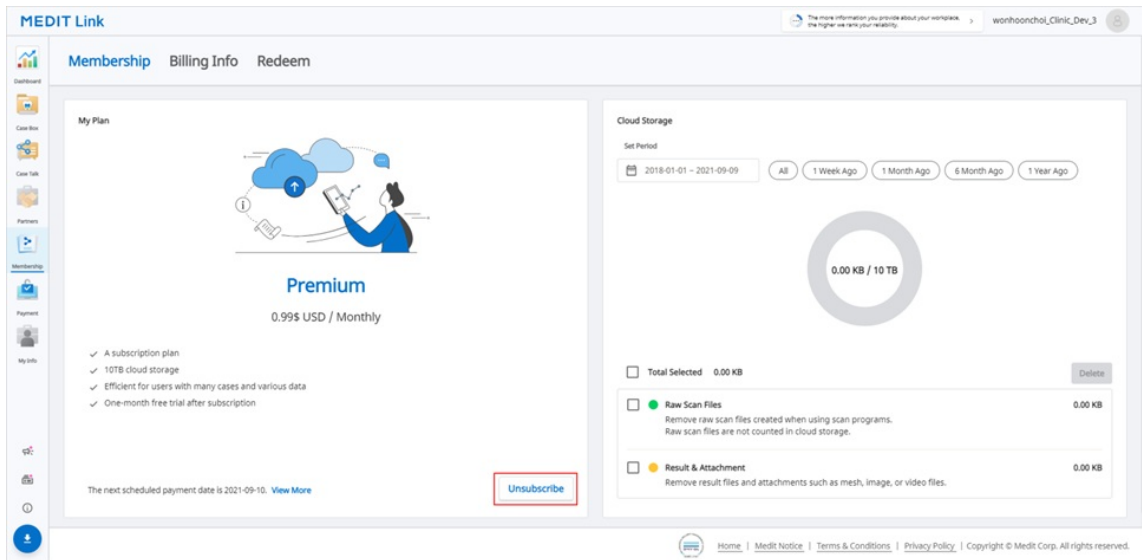

2. 点击“取消订购”。

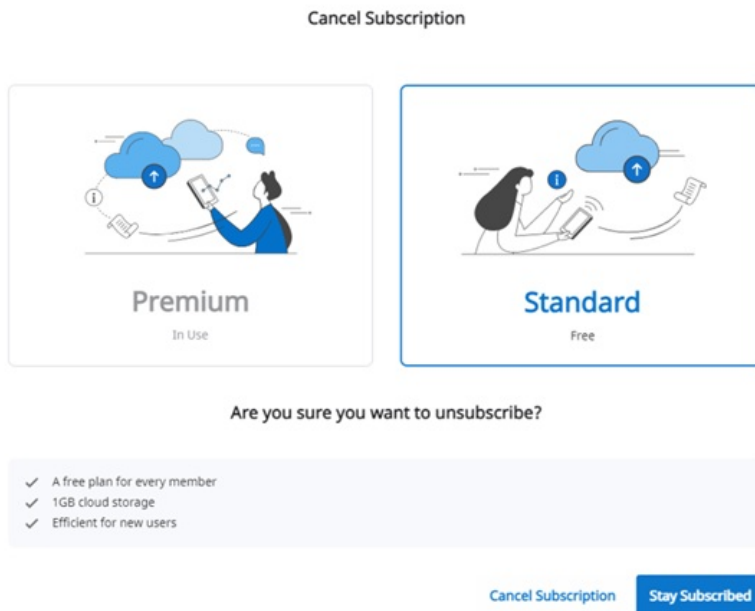

3. 为了予以确认，请在弹出的窗口中再次点击“取消订阅”。


Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. 您的订购将被成功取消。
5. 从下一个付款日开始，您的会员计划将随即变为Standard，而云存储空间的限额也将变回1GB。如超过该限额，则您便将无法对文件进行备份，同时也不能使用“订购”及“共享”功能。

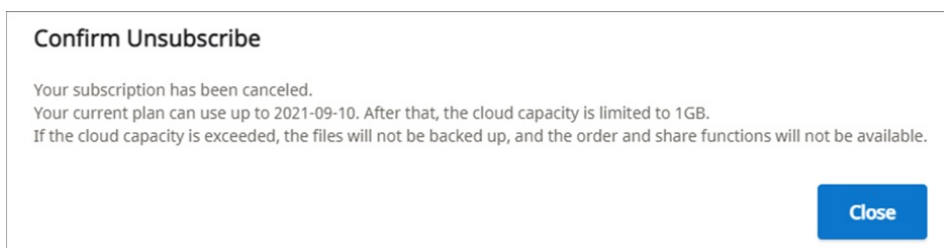

账单信息

您可以在这里查看会员计划订购的付款记录，如每次付款的发票。您还可以添加或修改付款方式，其将从下一次付款时开始生效。

The screenshot shows the 'Billing Info' tab selected in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: 'If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium.'

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

The footer includes links for Home, MEDIT Notice, Terms & Conditions, Privacy Policy, and a copyright notice for MEDIT Corp.

如何添加付款方式

1. 点击“编辑付款方式”。

This screenshot is identical to the previous one, but with a red rectangular box highlighting the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section.

2. 点击“添加付款方式”。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

 **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. 输入所需的信息并点击“添加”。

Add payment method

Card information

 Card number	MM / YY
---	---------

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s
Terms of Service and Privacy Policy.

4. 新添加的付款方式将被设为默认方式并在下一次付款时生效。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

如何修改付款方式

1. 点击“账单”对话框窗口中点击您想修改的付款方式旁边的“扩展菜单”图标。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

Visa **** 5556 Default Expires 11/2021 X

Visa **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. 点击“存为默认”来将所选择的银行卡设置为默认付款方式。

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic
\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default
Delete

BILLING INFORMATION

兑换

可注册促销活动中所提供的兑换码。还可凭借兑换码来使用Premium会员计划。

注册兑换码

1. 输入兑换码并点击“注册”。

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
No search results were found.						

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. 阅读通告并在弹出的对话框中点击“注册”或“应用”。
 - 注册: 表示可注册兑换码。您可以在注册后激活并使用兑换码。

- **应用** :表示可注册并激活兑换码。促销折扣将立即生效。

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

激活兑换码

尽管您可以注册多个兑换码，但是您需要激活您想使用的兑换码。

1. 点击您想使用的兑换码旁边的“激活”按钮。
如当前没有兑换码处在“已激活”状态，则您所选择的兑换码将立即生效。如已有兑换码被激活，则其状态将变为“等待中”，这表示您可以先使用您所选择的兑换码。而在当前使用的兑换码逾期后，等待中的兑换码则将立即被重新激活。

2. **注意**

仅可有一个兑换码处于“等待中”的状态。

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

付款

注意


下列服务不可用于Medit Link China。

- 付款

付款详情(诊所&实验室账户)

您可以通过“付款详情”页面来查看您与您的合作伙伴之间的付款及交易记录。

付款账户信息(仅适用于实验室账户)

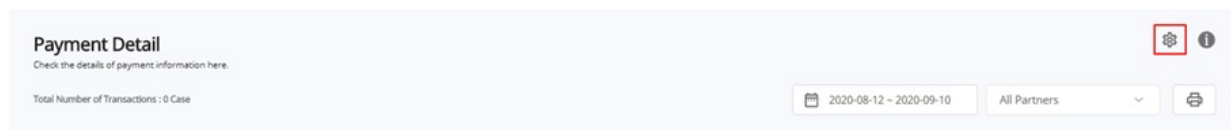

该功能仅适用于实验室管理员账户, 可使您输入相应的信息来收取您的合作伙伴的付款。

- 您须输入您的账户信息以便让您的合作伙伴通过在线支付系统来下订单。

注意

如您选择的国家支持Stripe, 那么通过点击注册Stripe的按钮您便将会被转至Stripe。您可以选择韩国, 随后输入接收付款的当地银行账号, 最后KCP将负责来处理您的付款。

我的信息

我的账户

您可以在此处查看并编辑您在注册时所输入的信息并查看您的会员状态。

The screenshot shows the 'My Account' page with a navigation bar containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. The 'Account Information' section includes a profile picture placeholder, email address 'coldgreentea@naver.com' with a 'Change Email Address' button, a password field with a 'Change Password' button, a name field 'wonhoonchoi_Lab3', and dropdown menus for 'Language' (Korean) and 'Country' (Korea, Republic of). A note states: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.' Below this is the 'Subscription Information' section with a 'Subscribe' button and the word 'Standard'. The 'Organization Information' section has an 'Edit Information' button and shows the organization name 'wonhoonchoi_Lab3'.

我的公司 (仅管理员账户)

您可以在此处检查并编辑您公司的相关信息。该功能仅适用于管理员类型的账户。

The screenshot shows the 'My Organization' page with a navigation bar containing 'My Account', 'My Organization', 'My Scanner', and 'My Price List'. Below the navigation bar are three tabs: 'Address Information' (active), 'Organization Information', and 'Additional Information'. The 'Address Information' section is titled '(Mandatory) *' and includes fields for 'Address 1 *' (23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea) with a 'View Location on Map' button, 'Address 2' (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.), 'Zip/Postal Code *' (02835), 'City *' (Seoul), 'Country *' (Korea, Republic of), 'State/Province *' (Seoul), 'Office Phone *' (+82 01026088546), and 'Mobile Phone (Optional)' (+82 01026088546). A note at the bottom states: 'If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.'

我的扫描仪

您可以查看账户的连接设备信息。

My Account My Organization My Scanner My Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

我的价目表 (仅实验室管理员账户)

您可以输入您的实验室所提供的产品及每件产品的价格信息。

My Account My Organization My Scanner My Price List ⓘ

Teeth Arch

AED (₩) ▼

✓ All (99/557)

Inlay (8/12)

Onlay (8/12)

Coping (10/17)

Denture Coping (5/5)

Crown (15/26)

Pontic (23/36)

Post & Core (3/4)

Veneer (8/11)

Implant Crown (12/53)

Custom Abutment (2/3)

Surgical Guide (1/1)

Offset Substructure (4/5)

Partial Denture (8/7)

Diagnostic Wax-Up (0/1)

Custom Abutment + Implant Crown (0/159)

Custom Abutment + Coping (0/45)

Post & Core + Crown (0/100)

Post & Core + Coping (0/60)

☐

Name

인레이 지르코니아

Inlay

-

Zirconia

₩6.03

인레이 골드

Inlay

-

Gold

1.03

인레이 프레스 세라믹

Inlay

-

Press Ceramic

2.03

인레이 레진

Inlay

-

Resin

3.03

인레이 하이브리드 세라믹

Inlay

-

Hybrid Ceramic

4.03

인레이 글라스 세라믹

Inlay

-

Glass Ceramic

1.00

인레이 컴퍼지트 레진

Inlay

-

Composite Resin

1.00

인레이 e.max

Inlay

-

e.max

1.00

Save

注意

- 在您与合作伙伴签订了合同后，您的合作伙伴可以基于该产品列表及价格来订购您的产品。
- 如您与您的合作伙伴仅拥有合作关系，那么Medit Link则不支持需要价格信息的订单。

45

其他菜单

公告&更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit信息

您可获取有关使用Medit Link的各种信息。还可访问Medit的教育及信息资源，如Medit Academy、Medit Academy YouTube及Medit帮助中心。

Need more help?

[Medit Academy](#) >

[YouTube](#) >

[Help Center](#) >


下载Medit Link App

您可以从网页端下载程序安装程序的最新版本。该菜单有助于在您丢失了产品包装中所提供的安装程序或您的安装程序过期的情况下使用。

46

注意


Medit Link可在您有网络连接的情况下自动进行更新。

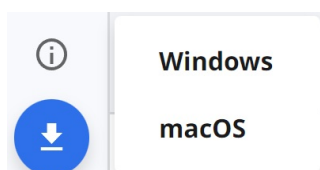

Windows

macOS

概览

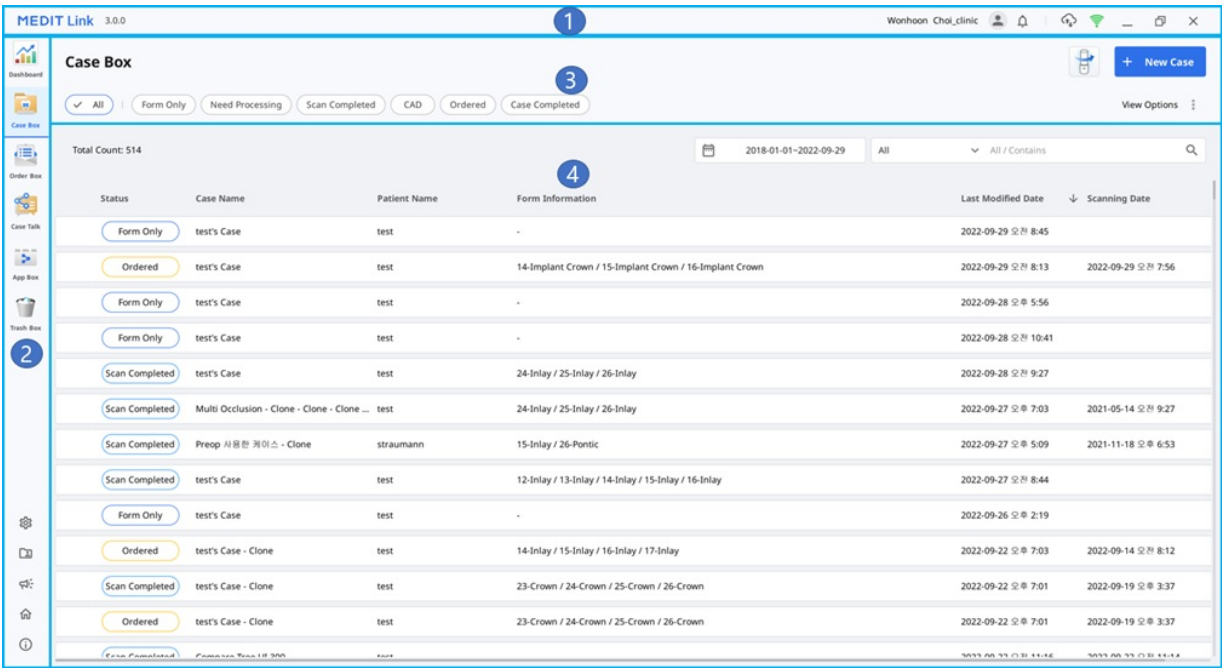

1	标题栏	前往“Medit Link App” > “标题栏”来了解详细信息。
2	菜单	前往“Medit Link App” > “菜单”来了解详细信息。
3	工具及功能	前往“Medit Link App” > “文件浏览器”及“Medit Link App” > “视图选项”来了解详细信息。
4	病例列表	前往“Medit Link App” > “筛选及搜索”来了解详细信息。

Box概览

作业流程		诊所账户	实验室账户
步骤 1	创建病例	Case Box: 可创建病例并通过各种筛选及搜索选项来轻松搜索并查看病例。在创建了病例后，您可以直接关联扫描程序及CAD程序以对其进行操作。	
步骤 2	订购/管理病例	Order Box: 可管理所订购的病例。还可提供从订购到完成病例等管理流程的功能。	In Box: 可管理所收到的病例。还可提供接受、拒绝、配送及完成病例等管理流程的功能。
步骤 3	操作扫描/CAD		Work Box: 管理已从In Box发出或您已创建的病例。您可以直接关联扫描程序及CAD程序以对其进行操作。
步骤 4	共享病例	Case Talk: 可有限制或无限制地与特定的人或Medit Link的注册成员共享所创建的病例。	
步骤 5	补充或附加操作	App Box: 可使用各种对您的数字化牙科作业流程能够予以补充的App。您可以下载并安装Medit或第三方的App。	


步骤 6	删除/恢复病例	Trash Box: 可查看、恢复或永久性地删除Trash Box中的病例。
---------	---------	---

下表概述了每种类型的诊所及实验室账户可使用的Box。

账户类型		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
诊所账户	管理员	O	O	X	X	O	O	O
	成员	O	X	X	X	O	O * 仅“恢复”功能	O
实验室账户	管理员	X	X	O	O	O	O	O
	成员	X	X	X	O	O	O * 仅“恢复”功能	O

标题栏

标题栏可让用户快速访问诸如网络状态、云同步、通知等功能。

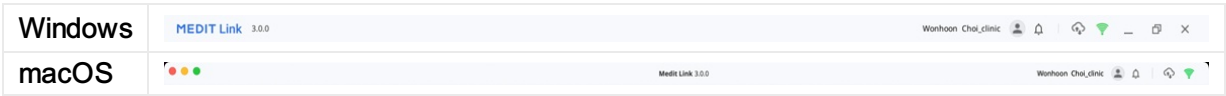

我的信息

我的信息包含像简介图片、公司名称、电子邮箱地址以及会员名称等基本的用户信息。

其还可在Medit Link网页端中提供退出选项及“我的账户”页面的快捷键。

My Information

1

2 Organization Name

Email Address

Name

3Close

4Log Out

Edit >

1	可显示简介图片。
2	可显示公司名称、电子邮箱地址及用户名称。
3	可退出当前账户。
4	可在当前账户时前往Medit Link网页端。您可以在注册时查看、编辑并管理您所输入的账户信息。

通知

您可以查看与合同、订单及工作流程相关的通知。

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | 勾选该处便可仅显示未阅读的信息。 |
| 2 | 点击任意通知即可立即前往相关的病例或网页。 |

病例同步管理器

病例同步管理器適用於在Medit Link中上传及下载病例。您可将多份病例上传至云端或将其下载到您的本地电脑端。

[illegible]

上传

总病例数/ 所选病例 数	可查看需要上传的全部/所选病例的数量。
上传全部	可将全部病例上传至云端存储中。
取消全部	可取消全部上传请求。
	表示全部病例上传至云端。
	表示取消上传所选病例。
	表示重新上传所选病例。

下载

总病例数/ 所选病例 数	可查看需要下载的全部/所选病例的数量。
下载全部	可将全部病例下载至您的电脑端。
取消全部	可取消全部下载请求。
	表示将病例下载至您的电脑端。

	表示取消下载所选病例。
	表示重新下载所选病例。

网络状态

Medit Link可使您在连接到网络时无缝使用所有功能。

为帮助您实时检查网络连接的状态，“网络状态”图标将显示在标题栏上。

如网络连接状态不良，则您可能会遭遇如下限制：

- 诸如订购病例、创建病例、通过**Case Talk**共享以及云同步等部分功能将受到限制。
- 由于网络环境的影响，服务的总体性能会出现下降。

在这种情况下，您可以先进入离线模式来进行某些基础操作。随后，在网络连接正常后，再使用其他需要网络的功能。

注意

网络标识表示当前区域与亚马逊网络服务(AWS)之间的响应速度。其并不代表您的网速。也就是说，某些时候即使您的网速非常快，但其所显示的状态却可能是“不良”或“极差”。


如其它进程使用了同一个网络，那么网速也可能显示“欠佳”或“较差”并且Medit Link的总体性能也会变差。在这种情况下，请切勿与其他程序共用同一个网络。

例如，“上传原始数据”功能便往往要占据很大的网络进程。如此时标识显示网络状态“欠佳”或“较差”，那么请前往“设置” > “上传原始数据”并关闭“自动上传”选项。

菜单

Dashborad


您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

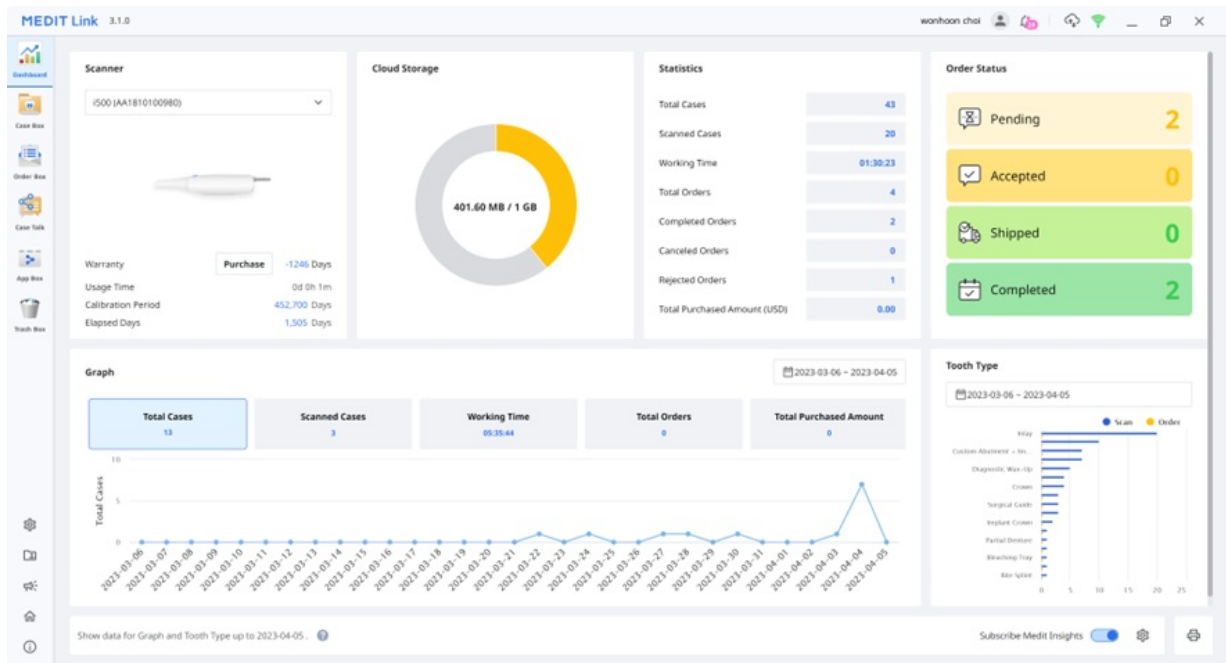

注意

请前往[Medit Link网页端 > Dashboard](#)了解有关Dashboard及Medit Insights的更多信息。

Case Box/Work Box

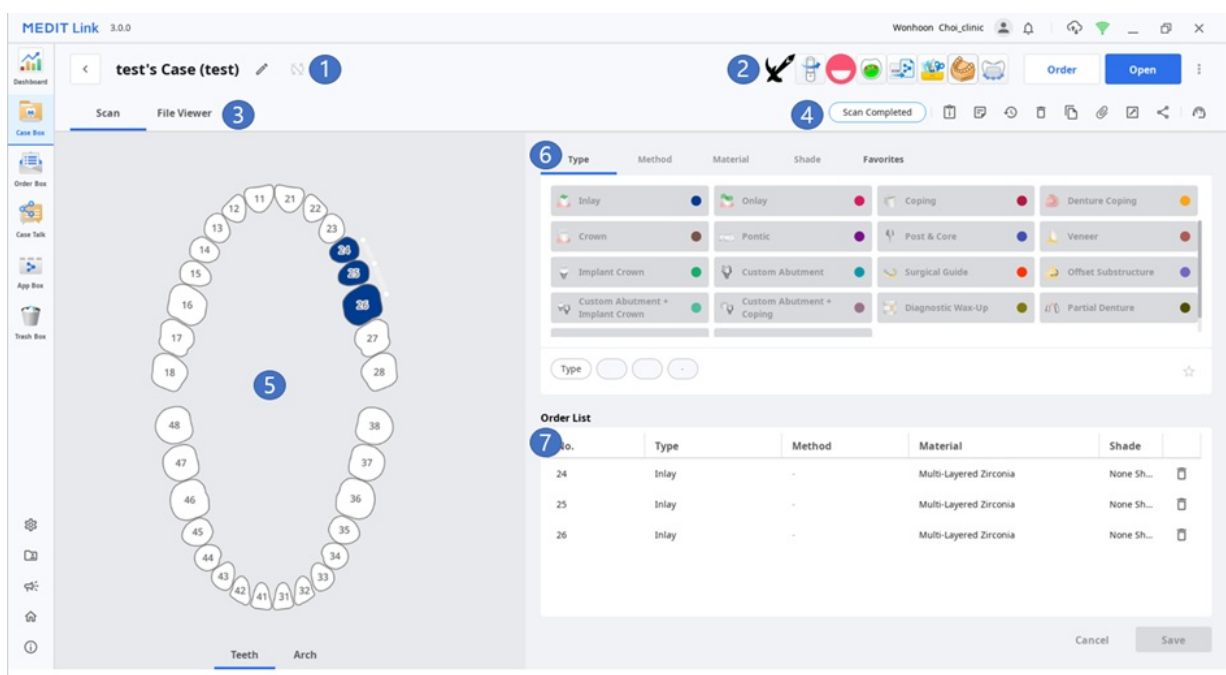

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供可供使用的关键功能: 订单/扫描(开启)/订购按钮及App图标。
3	显示可供使用的标签: 表格、CAD及文件浏览器。
4	显示管理病例及文件的功能。
5	显示所选CAD程序的表格注册用户界面。
6	提供类型/方法/材料/牙色信息以供用户为其所选的牙齿编号进行选择。
7	显示应用于所选牙齿的类型/方法/材料/牙色信息。

Case Box/Work Box中的标签

表格	CAD	文件浏览器
表格标签可在您为扫描作业输入像类型、方法、材料及扫描选项等基本信息时提供相应的用户界面。您所输入的信息将被传送到扫描程序中并可在与您的合作伙伴下订单时用作订单信息。	CAD标签可提供设置CAD选项的用户界面。 您设置的信息将被传送到相连接的CAD程序中。	可查看通过扫描程序及CAD所生成的结果文件。 文件浏览器可有效地显示及管理经获取或附加的3D模型及2D图片。


Case Box/Work Box中的功能

Case Box/Work Box中提供下列功能。

	病例状态	可显示病例的状态。
	转至“详情”	可在另一个Box中为同一病例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box)。
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。
	病例历史	可提供有关病例历史的详细信息。 History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	删除	可删除病例。 您无法删除已订购的病例或在离线时所创建的病例。
	复制	可在Case Box中为当前的病例创建一个复制体。所有数据均将被复制到经复制的病例中。 该功能有助于为同一位患者复制治疗信息或使用相同的信息或文件来进行追加订购。
	附加	可附加各种格式的文件。

	导出	可将扫描或CAD结果文件导出到本地电脑端中。您可以在导出文件时选择您所需的文件格式。 导出的文件可用在CAD及CAM软件的后续作业中。
	共享	可创建用于共享的链接。 拥有共享连接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如Chrome、Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。 您可以随意与任何人共享连接或仅与特定的人共享链接。您还可以设置逾期日期的PIN码或链接来确保私人信息的安全。
	提交支持请求	可转至Medit的帮助中心页面来提交支持请求。

Order Box/In Box

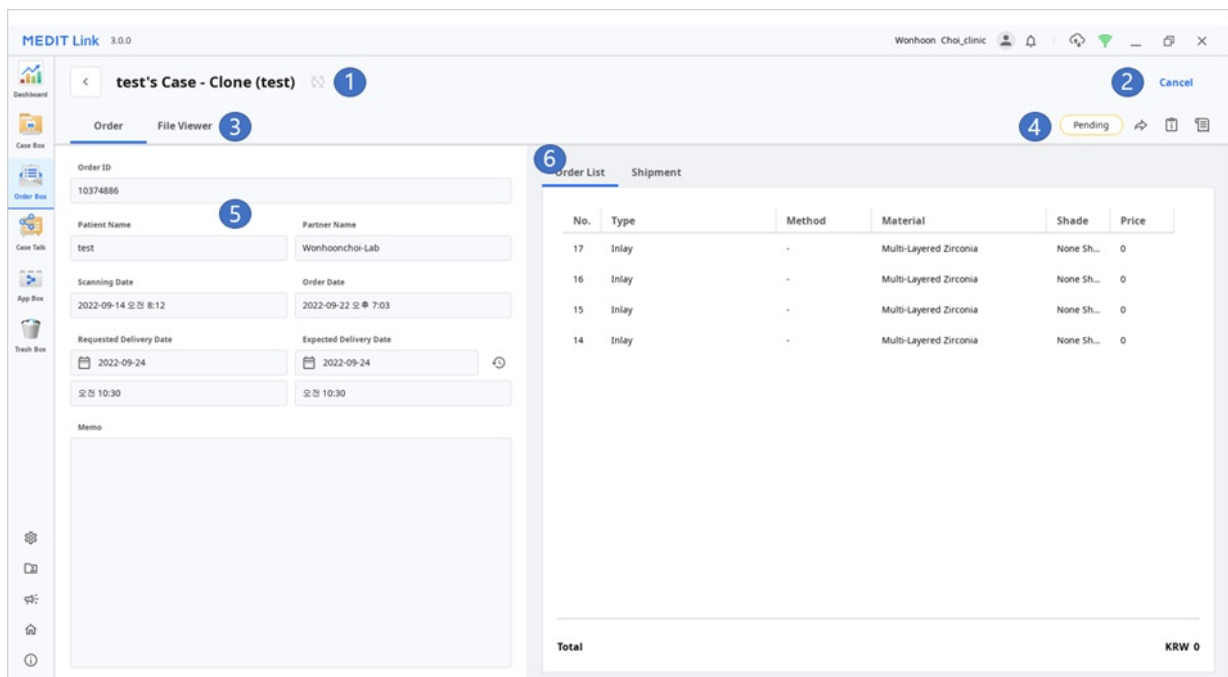

1	显示病例名称及患者姓名。
2	可提供进行订单管理的相关功能(接受/取消; 交货/收货)。
3	显示可供使用的标签: 订单及文件浏览器。
4	可显示管理病例及文件的共享: 病例状态、详情的快捷键、病例信息、备忘录&标签等。
5	可显示包括订单号、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录&标签等订单的详细信息。
6	可显示订购产品的信息及发货状态。

Order Box/In Box中的标签

订单	文件浏览器
可查看诸如订单号、患者姓名、账户名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录及标签等与订单有关的详细信息。	可查看扫描/CAD操作所生成的文件。 文件浏览器可显示并管理程序所获取或附加的3D模型及2D图片。

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册成员所共享。

用户可以在Medit Link应用程序及Medit Link网页端中通过"Case Talk"查看所有共享病例的列表。

注意

“Case Talk”服务需在联网的情况下才可使用。

MEDIT Link 3.0.0
Wonhoon Choi_clinic

Case Talk

Dashboard
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box
 Trash Box

2018-01-01 ~ 2022-09-29

Case Talk Name ▼

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanning Date	Shared Date ↓	Expiration Date	
test's Case-262 - Clone_2022-08-05 18:00:05	test	14, 15, 16, 17	2022-07-28 08:27	2022-08-05 18:00	2022-11-03 23:59	
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:09	2022-10-23 23:59	
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:02	2022-10-23 23:59	
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:58:18	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:58	2022-10-19 23:59	
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:57:54	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:57	2022-10-19 23:59	
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:56:47	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:56	2022-10-19 23:59	
test1's Case_2022-07-14 14:45:16	test1	Maxilla	2022-07-06 10:36	2022-07-14 14:45	2022-10-12 23:59	

用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。

App Box

App Box可提供能为您**的基础扫描作业流程**予以补充并提升作业效率的各式附加程序。

Medit Apps包括Medit开发的原创软件及与我们在数字化牙科不同领域的合作伙伴所整合应用程序, 如3D打印、其他CAD/CAM软件等等。

从Medit Apps及Partner Apps中下载可用的App即可创建牙科器具、分析扫描数据、协助您进行咨询问诊或提升您作业流程的效率。

MEDIT Link 3.1.0

Search by App Information

All Medit Apps Partner Apps

All Apps All Categories

App Name	Type	Version	Last Update	Status
Medit Occlusion Analyzer	Analysis Tool	v 1.0.1.72	2023-03-28	Update
Medit Margin Lines	Tool CAD	v 1.0.0.23	2022-12-08	Installed
Medit Model Builder	Tool CAD	v 1.3.1.53	2023-03-16	Update
Medit Design (Formerly Known as Medit Compare)	Tool	v 2.1.2.76	2022-12-20	Installed
Medit Splints	Tool	v 1.0.3.127	2022-12-20	Installed
Medit Ortho Simulation	Tool	v 1.3.0.22	2022-12-08	Installed
fastscan.io Integration	Tool	v 1.0.1.0	2022-12-06	
DentbirdCrown Integration	CAD	v 1.2.9.0	2022-11-22	
Medit Temporaries	CAD	v 1.1.2.113	2022-11-16	

Medit Academy
Get started with our online education and become a Medit Expert

MEDIT
[Learn more >](#)

Medit Help Center
Need any help?
Check out our Medit Help Center, now available in 10 different languages!
[Learn more >](#)

Trash Box

Trash Box可临时存储您所删除的病例。Trash Box的任何病例均可被恢复或永久性删除。



警告

从Trash Box中所删除的数据将被从电脑及服务器中永久删除且无法得到恢复。

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Trash Box

☐ Restore ☐ Delete Total Count: 30

All

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:13	Wonhoon Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 09:12:11	Wonhoon Choi_clinic	4,469 KB

设置

请前往“设置”窗口的“Medit Link App” > “设置”来了解更多详细信息。

患者管理

您可以在“患者管理”窗口中添加、编辑、删除或合并患者。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Patients with No Cases ☐

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	☐
☒	5-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	☐
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	☐
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	☐
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	☐
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	☐
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	☐
☐	gfm				1	2020-09-15	2020-09-15	☐
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	☐
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	测试记录				2	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	☐
☐	testq1231				26	2019-07-25	2020-09-11	☐

Close

添加新患者

1. 点击“新患者”。

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

Female

Male

Birth Date

yyyymmdd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3-parties on order.

Terms & Conditions

Cancel

Save

2. 在“新患者”对话框中输入所需的信息，然后点击“保存”。

删除患者

注意

仅可在患者没有病例的情况下才可删除该患者。

1. 从列表中选择您要删除的患者。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All

Search / Contains

+ New Patient

Delete

Merge Patients

Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.J Abutment2				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scaribody				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	Abutment Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	salkjadsklf				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	Test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. 点击“删除”。

合并患者

您可将多位患者的所有病例合并到一位病人名下。

59

1. 从列表中选择您想合并的患者。

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☐	5-9_jScan_CAMOrder_test2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☐	5-9_jScan_CAMOrder_test2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	gitt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试用例				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test2				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1231				26	2019-07-26	2020-09-11	

Close

2. 点击“合并患者”。
3. 选择您想将所有病例合并到其名下的目标患者。
4. 所有病例均将被合并到目标患者中，目标患者的患者信息将保持不变。

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
 After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. 点击“应用”即可进行合并。

公告&更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

前往Medit Link网页端

您将通过您当前所使用的账户来登录到Medit Link网页端。

Medit信息

您可获取有关使用Medit Link的各种信息。还可访问Medit的教育及信息资源，如Medit Academy、Medit Academy YouTube及Medit帮助中心。

Need more help?



[Medit Academy](#)



[YouTube](#)




[Help Center](#)



设置

通用

可提供用来查看整体系统设置的选项。

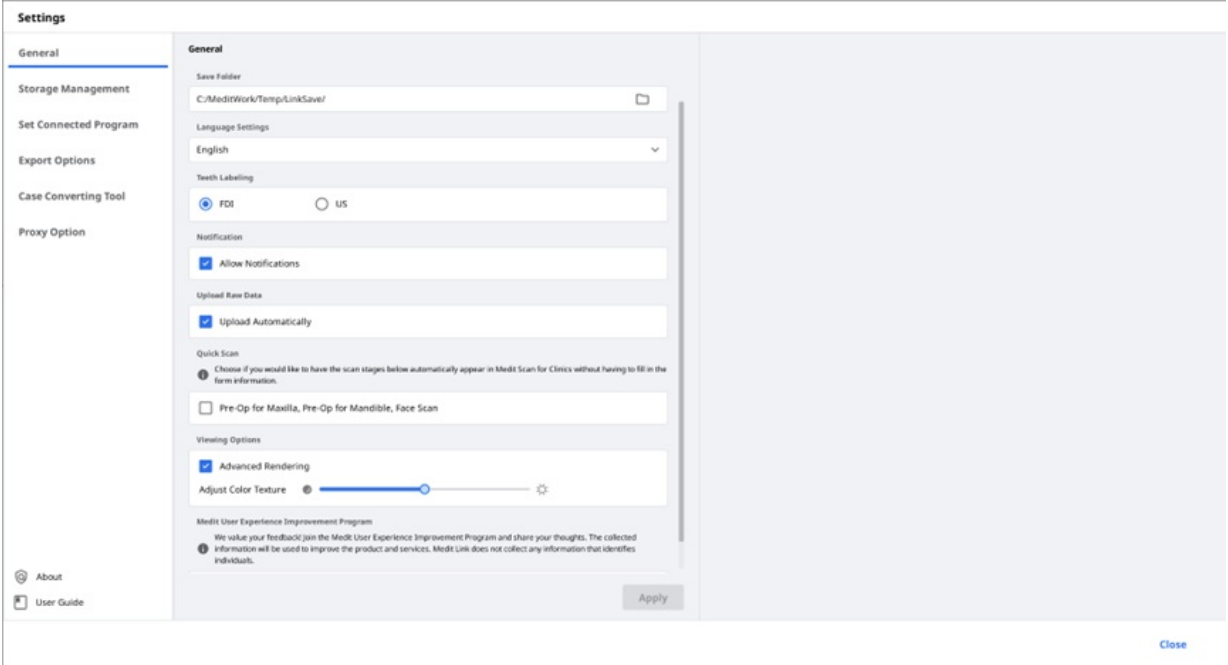

保存文件夹	可指定用来指定要存储在Medit Link及所连接的程序中所生成结果的文件夹。	
语言设置	可选择程序要使用的语言。	
牙齿标记	可在FDA与US之间选择牙齿标记系统。	
通知	在勾选该选项时，您便可接收有关程序更新的相关通知。	
上传原始数据	当您勾选该选项时，原始数据将被自动上传至云端。 该选项有助于您在另一台电脑上通过相同的账户使用Medit Link时备份原始数据并进行无缝式的扫描。 原始数据的云备份仅适用于在Medit Scan for Clinics中所获取的数据。	
快速扫描	可选择您是否想让下方的扫描步骤在不必填写表格信息的情况下自动显示在Medit Scan for Clinics中。 • 上颌术前模型 • 下颌术前模型 • 面部扫描	
视图选项	高级渲染	在勾选该选项时，程序将以更加生动逼真的渲染效果来显示3D模型。
	调整颜色纹理	可调整3D模型的亮度。 * 当您通过其他软件打开相同的数据时，其结果的颜色可能会与Medit Link中的颜色有些许出入。


Medit 用户体验提升计划

可加入“Medit用户体验提升计划”。

- 我们收集信息的目的在于对我们产品及服务进行不断的提升及改进。
- 我们绝不会收集任何涉及个人身份的信息。

存储管理

可查看并管理本地及云存储空间。

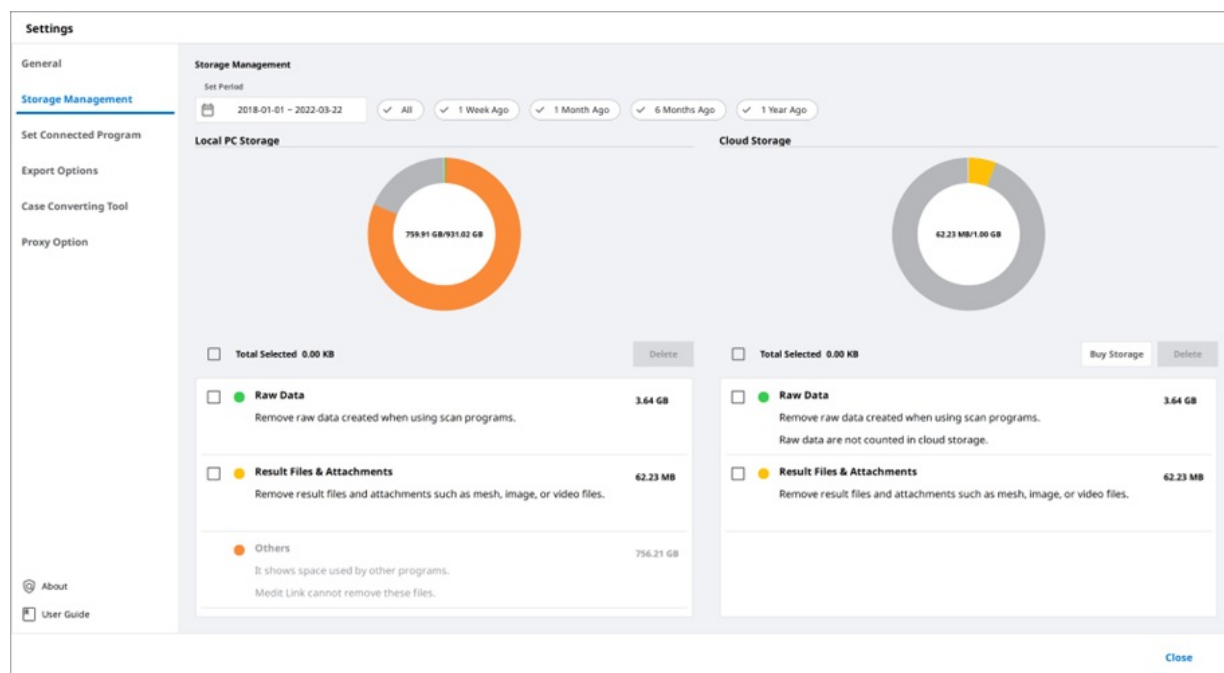

设置时期

可设置特定的时期来删除该时期内所创建的数据。

- 全部: 查看全部文件。
- 1周前: 查看创建后1周内的文件。
- 1个月前: 查看创建后1个月内的文件。
- 6个月前: 查看创建后6个月内的文件。
- 1年前: 查看创建后1年内的文件。

本地存储

可管理电脑端的存储空间。

原始数据	可从电脑端删除所选择的原始数据。 如原始数据已被上传至云端, 那么您便可以随时下载并使用。
结果文件 & 附件	可从电脑端删除结果文件及附件, 如网格、图片及视频。 如这些文件已被上传至云端, 那么您便可以随时下载并使用。
其他	可查看用来运行系统及其他程序的文件。还可显示您电脑端的存储空间。您无法直接从Medit Link中删除这些文件。
删除	可从电脑端删除所选择的文件。


云存储

可管理云存储空间。

原始数据	由于原始数据不占用云存储的空间，因而其不会出现在饼状图中。但是您可以根据需要在这里管理原始数据，如将其删除以保护患者的隐私信息等。
结果文件 & 附件	结果文件及附件将占用云存储空间。如云存储空间已满，那么您可以通过清理多余文件来释放更多的空间容量。
购买存储空间	如您正在使用Standard會員計畫，則您可通過訂購Premium會員計畫來擴展您的雲存儲空間。
删除	可通过清理在云存储空间中所选择的文件来释放存储空间。

设置连接程序

可管理支持在Medit Link中集成的程序。

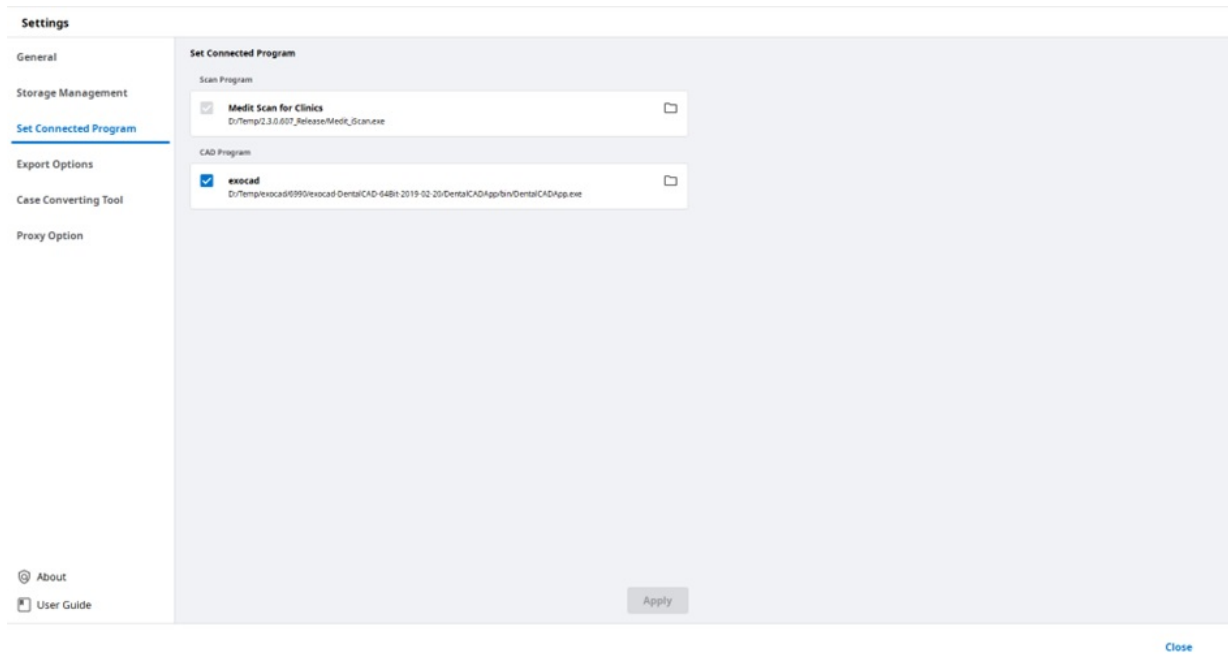

您可以连接如下程序：

	诊所账户	实验室账户
扫描程序	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs
CAD程序	exocad	exocad

注意

下列服务的集成不可用于macOS端的Medit Link中。

- Medit Scan for Labs
- exocad

导出选项


可设置从Medit Link导出文件的方式。

CAD类型	可选择您想用于设计的CAD程序。 程序将基于您的选择来调整结果, 进而使您在无需对齐坐标轴的情况下进行设计。
文件导出路径	可指定您想要存储结果的路径。
网格格式	可指定最终网格文件的格式。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩&合并	压缩文件: 可将所有结果压缩到一份文件中。 合并单个网格: 可将上颌或下颌的结果合并在一份文件中。当使用某些不能导入及操作多份文件的程序时, 您可以将其合并为一份文件以便在这些程序上进行操作。
相同文件夹或文件已存在时的选项	可在目标路径中存在相同的文件夹或文件名称时选择病例的默认操作。 • 导出时始终询问。 • 导出新文件并覆盖现有文件。当前存储的文件将被丢弃。 • 创建一个文件夹并导出文件
文件夹名称规则	可在导出文件时创建文件夹名称的规则。 设置的规则将被应用到文件夹命名中, 导出的文件将被保存在所创建的文件夹中。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者编号、订单编号 • 实验室账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单编号

文件名称规则	可定义导出文件名称的规则。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者编号、订单编号 • 实验室账户 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单编号
--------	---


病例转换工具

可在不同的账户之间移动病例。

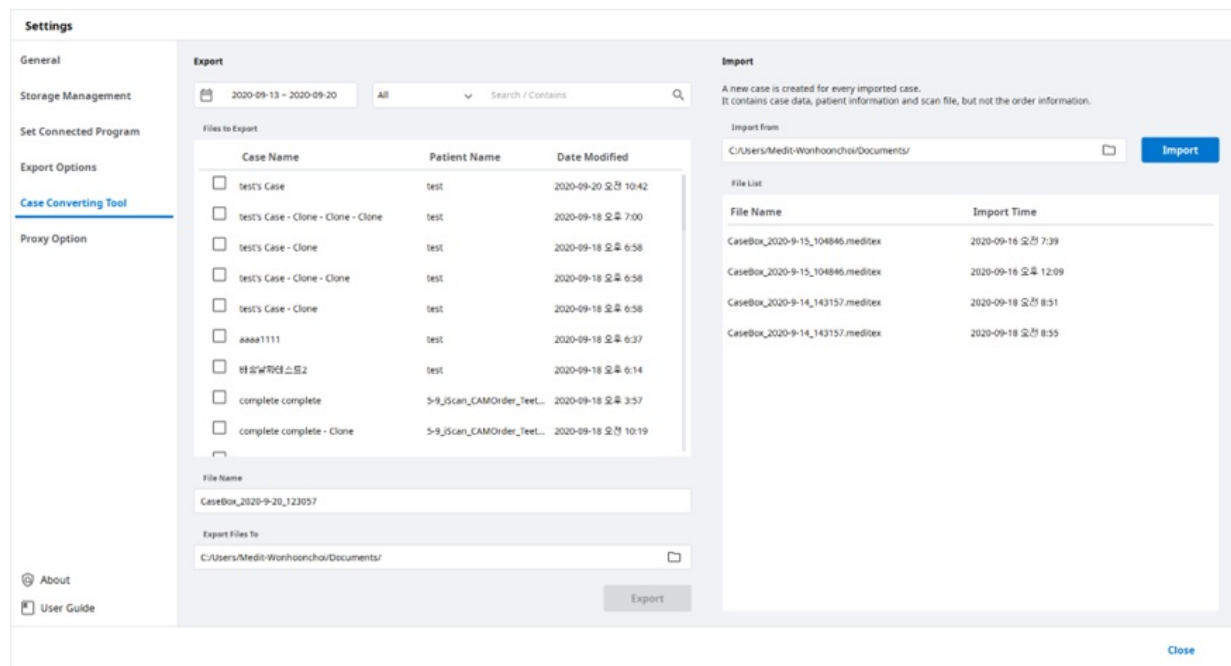


如何使用病例转换工具

1. 打开Medit Link并点击“设置”。

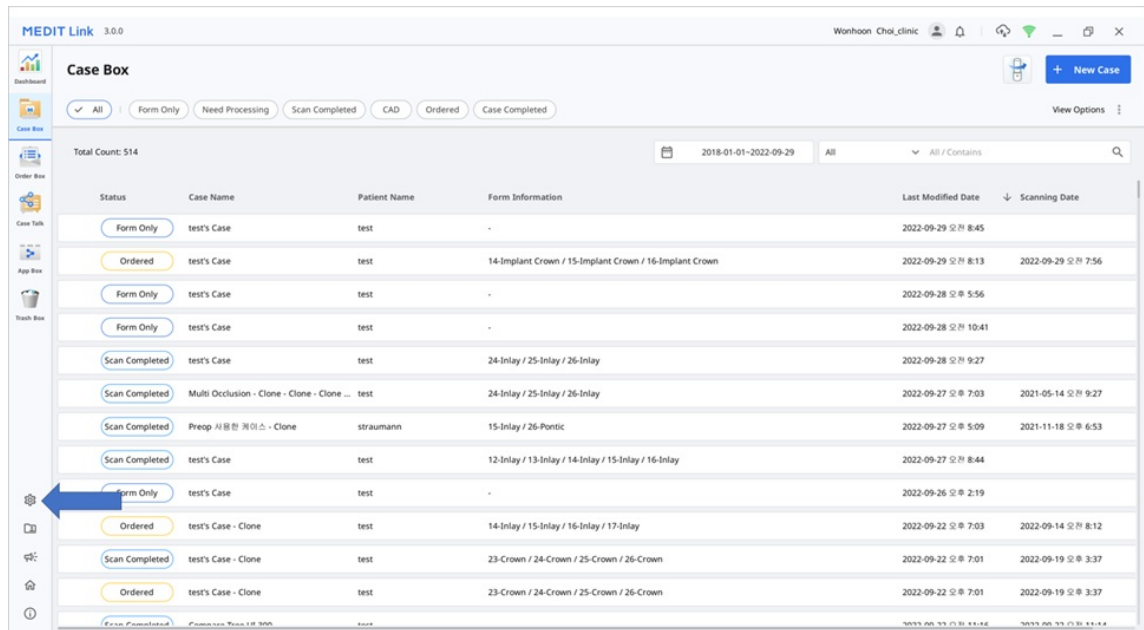


2. 选择菜单左侧的“病例转换工具”区域。

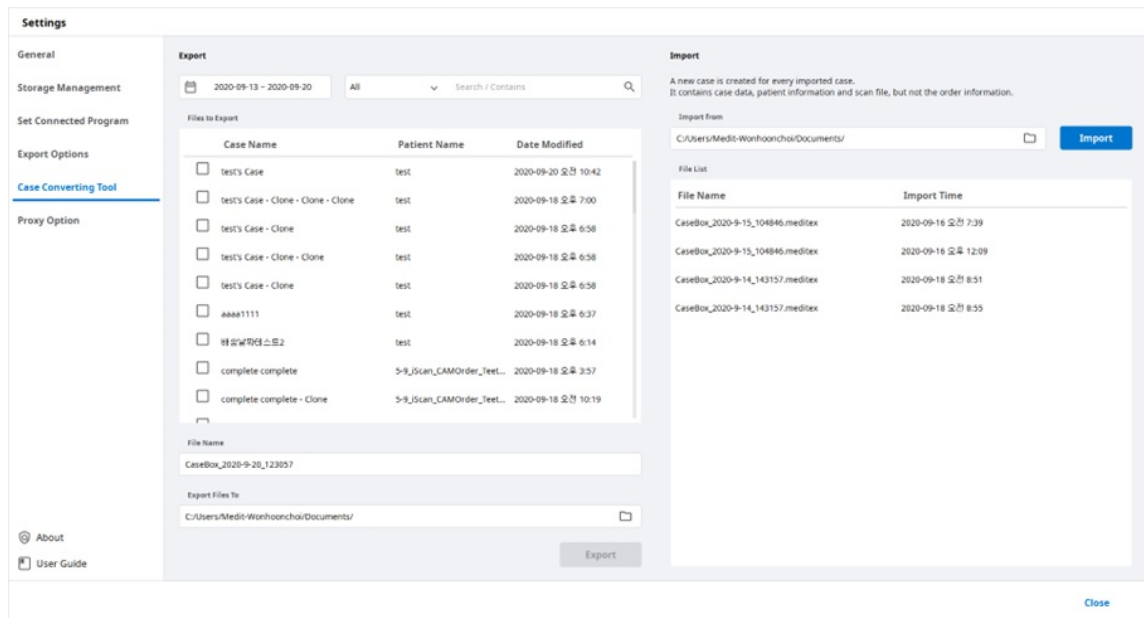

3. 在“导出”区域中，点击文件夹图标来浏览您的电脑以找到您想导入的.meditex文件。


4. 点击“导入”图标并在下方的文件列表中查看所导入的文件。

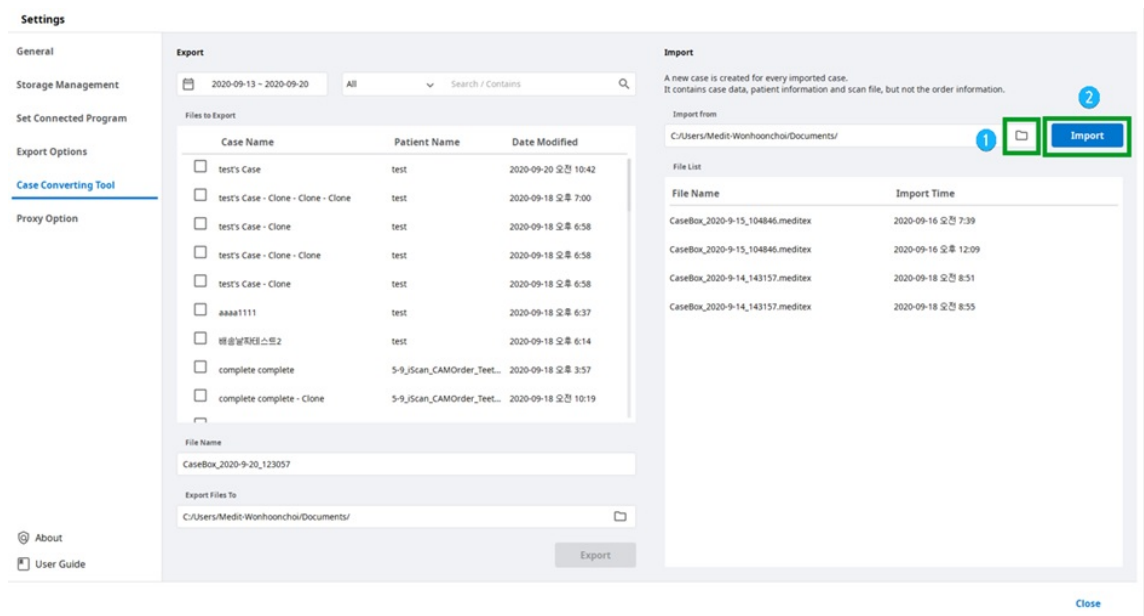

5. 所导入的病例也将出现在您的**Case Box**(诊所账户)或**Work Box**(实验室账户)中。


代理选项

在某些网络受限的环境中，您可以更改网络设置。

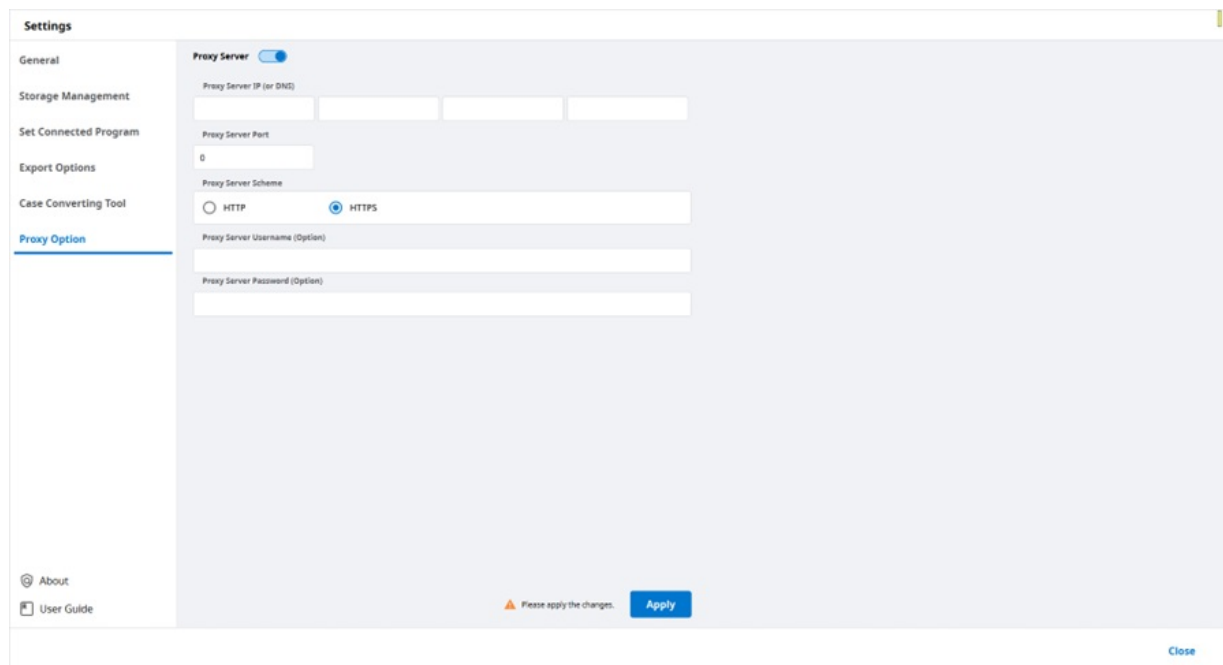

产品信息

可显示有关Medit Link的详细信息。

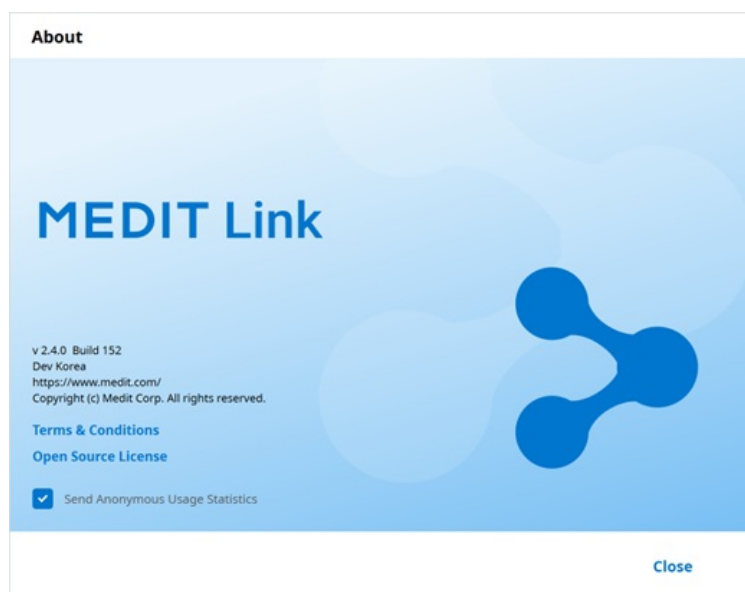

《用户指南》

可获取Medit Link的《用户指南》。

须连接网络才可打开《用户指南》。

文件浏览器

文件浏览器可分组并显示各种数据，包括从与Medit Link相关联的程序处所获取的数据以及用户附加的数据。


其可提供基本的管理功能，如显示/隐藏数据、调整不透明度及删除数据。

还可预览以下格式的文件：

- 3D数据：STL、OBJ、PLY
- 2D图片：PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 视频文件：MKV、MP4、AVI、WMV

数据树

您可在数据树中分组并显示病例的所有数据。还可从数据树显示/隐藏数据、调整透明度及删除数据。

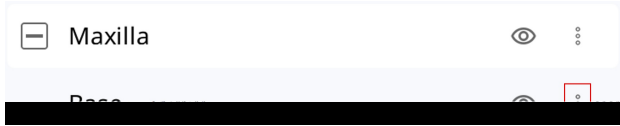	显示/隐藏	可显示或隐藏相应的数据。
	不透明度	当您点击数据树上的某个数据时，滑杆条便将自动出现。您可通过移动滑杆条来调整所显示数据的不透明度。 
	更多	点击“更多”图标即可显示其它可用的功能。  • 仅显示此：隐藏所有其它数据而仅显示相应的数据。 • 隐藏：隐藏数据。 • 复制：复制数据并将其添加至“附件组”中。 • 导出：导出所选择的文件。 • 重命名：修改数据的名称。 • 删除：删除数据。







注意

您可在“在线状态”时对数据进行重命名。

模型控制工具

3D模型控制

	平移	可移动模型。
	旋转	可旋转模型。

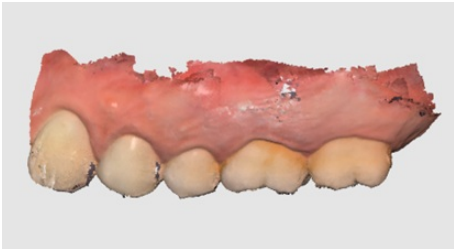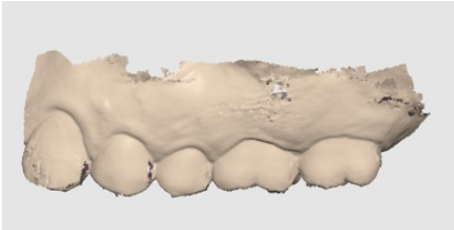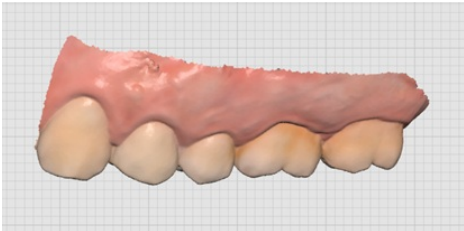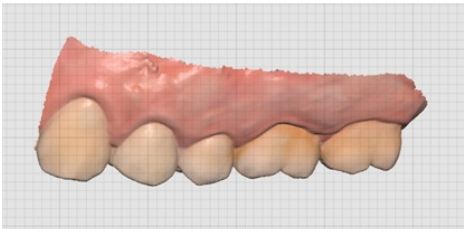	放大/缩小	可放大及缩小模型。
	全屏显示	可将模型置于屏幕中央。
	模型显示模式	纹理开启 可以真实的纹理颜色来显示数据。 
		纹理关闭 可以单一的颜色来显示数据。 
	网格设置 (mm)	网格开启 可在背景上显示网格。 
		覆盖开启 可将网格覆盖在模型上。 
		网格关闭 可隐藏网格。


2D 图片控制

	下一张/上一张图片	可在图片中前后移动。
	编辑	可编辑图片。
 	修剪/粘贴窗口	可拆分图片窗口并将其调整到所需的位置。还可修改窗口的大小。当窗口还原到其原始位置时，窗口的大小也会恢复至默认值。

“功能”工具


截图与备忘录

可将当前屏幕截取为2D图片，在上面进行绘制或添加注释。
还可将其与您的注释一并保存为文件并以参考资料的形式发送。

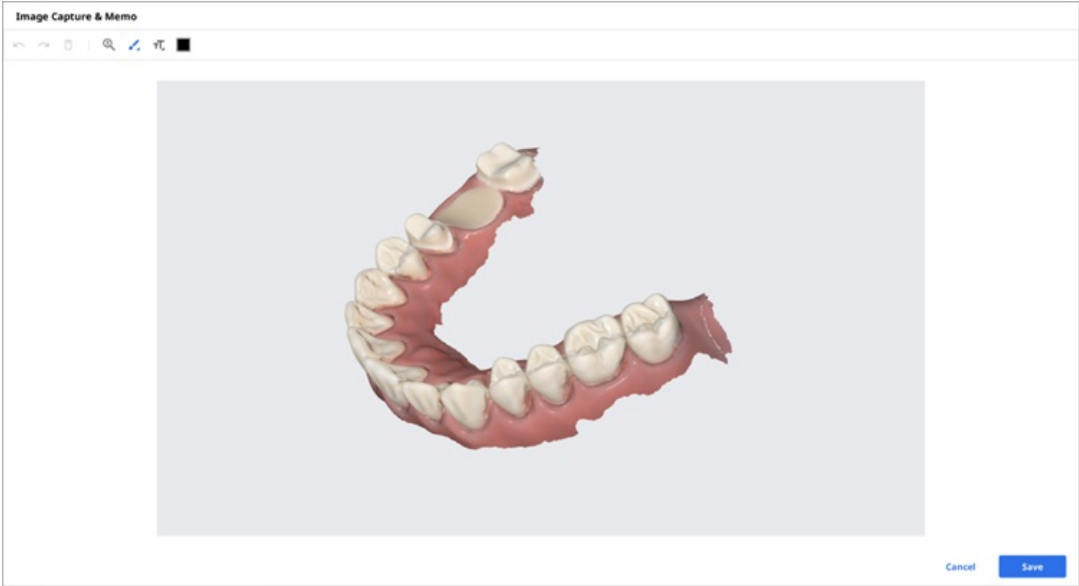

正畸截图


可截取当前视图方向及其上方/下方/左侧/右侧的图片。

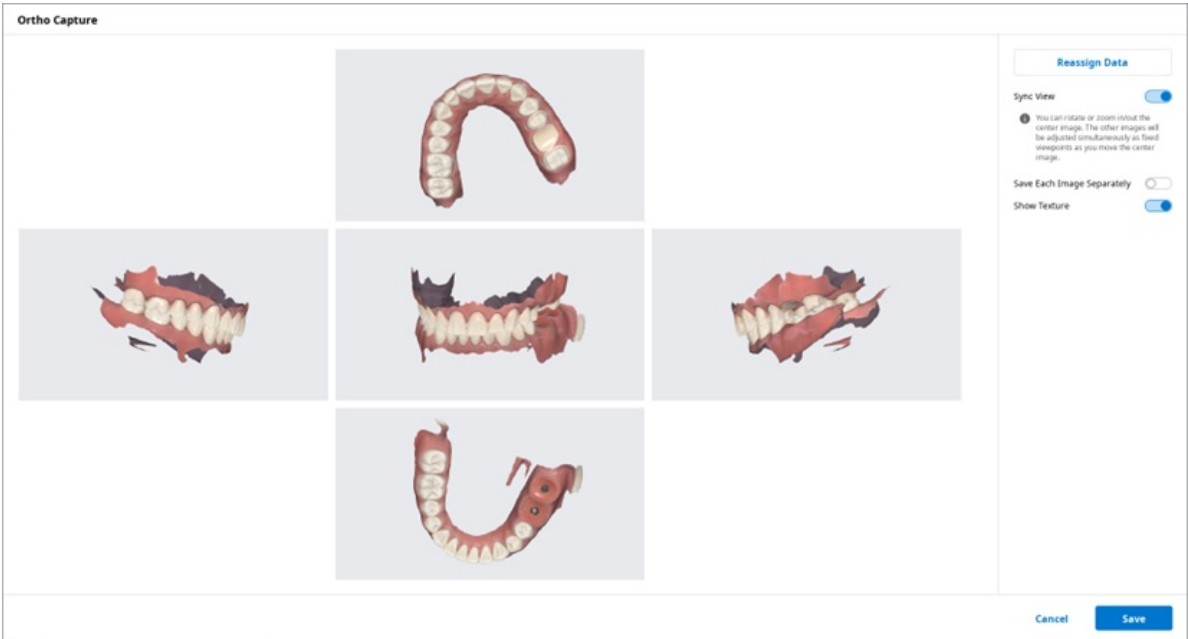

同步视图	当该选项开启时，您可以旋转或放大/缩小位于正中央的图片。而当您移动位于正中央的图片时，其它的图片也将按照固定的视角被同时做出调整。 当该功能关闭时，您可以单独平移、旋转或放大/缩小所有图片。
单独保存每张图片	可高分辨率地保存每张图片。
显示纹理	可为模型开启/关闭纹理。

可通过该功能修改用于上颌/下颌的数据。您可以使用所修改的数据来创建并运用“正畸截图”的结果图片。


重新分配数据

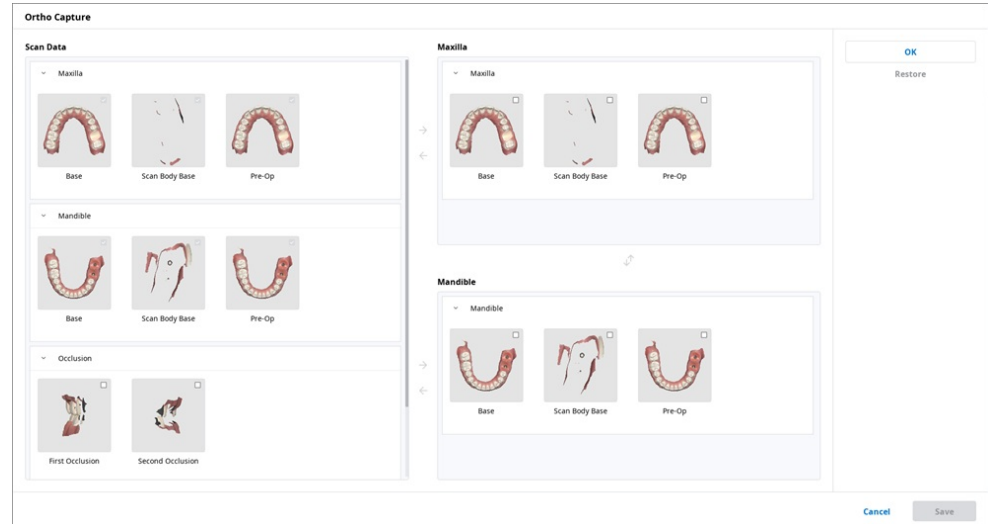

- 扫描数据:显示病例的全部扫描数据。
- 上颌:显示您为上颌所选的数据。
- 下颌:显示您为下颌所选的数据。


填补缺口

可通过3D网格数据来填补缺口。

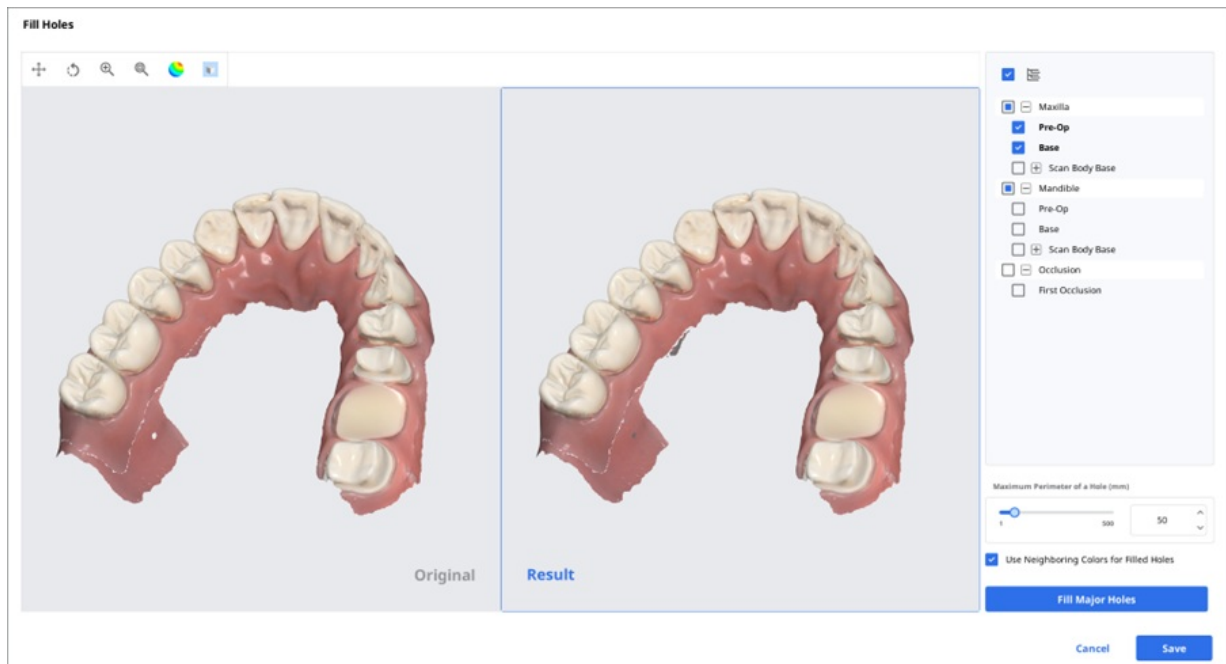

修剪


可提供多种编辑数据的工具。

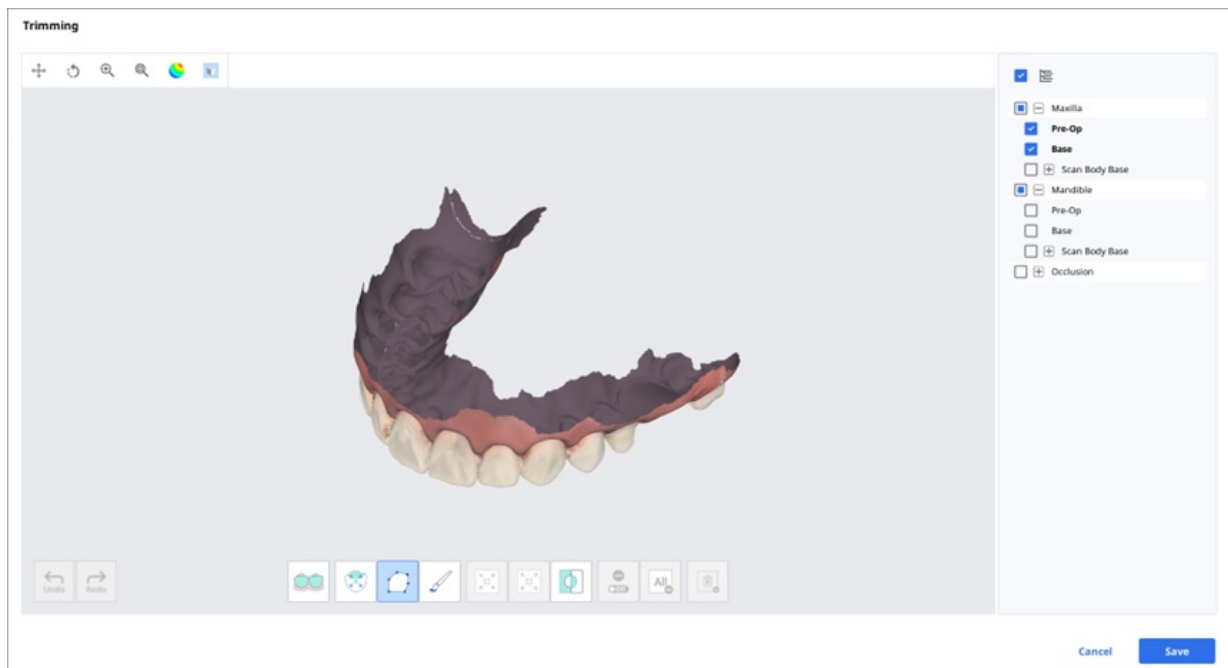

可以使用位于窗口底部的各式工具来编辑所选的3D数据数据。

选择		智能牙齿选择	可自动选择牙弓上除牙龈外的所有牙齿区域。 注意 该功能仅适用于在“使用GPU”选项开启时通过Medit Scan for Clinics已获取的扫描数据。
		智能单牙选择	可自动选择单个牙齿上除牙龈外的所有区域。在相应的牙齿上按住并拖拽鼠标即可进行该操作。
		多边形选择	可选择画面中所绘制的多边形内的所有数据。
		笔刷选择	可选择屏幕中手绘路径上的所有数据。仅可选择正面。笔刷有3种不同的尺寸可供选择。
所选区域的调整		缩小所选区域	可缩小所选区域。
		扩展所选区域	可扩展所选区域。
		翻转所选区域	可翻转所选区域。
取消选择		选择/取消选择	可使用各种工具取消选择相应的区域。
		清除全部选择	可清除全部所选择的区域。
		删除所选区域	可删除所选区域中的数据。

1. 通过区域选取工具来选取您想修剪的区域。

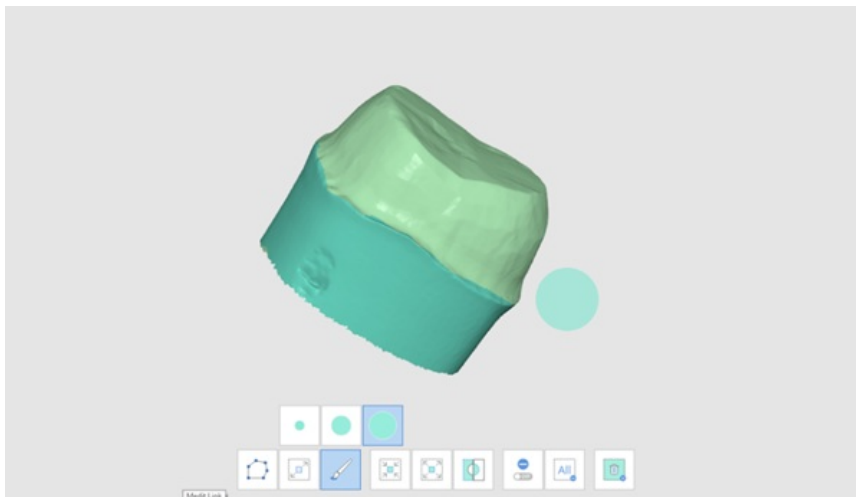


2. **注意**


多边形修剪工具可选取屏幕上所绘制的多边形内的所有数据, 而笔刷修剪工具则只可选取正面的数据。

3. 您可以通过下方的3种工具来翻转、缩小或扩展所选取的区域。


- 翻转所选区域

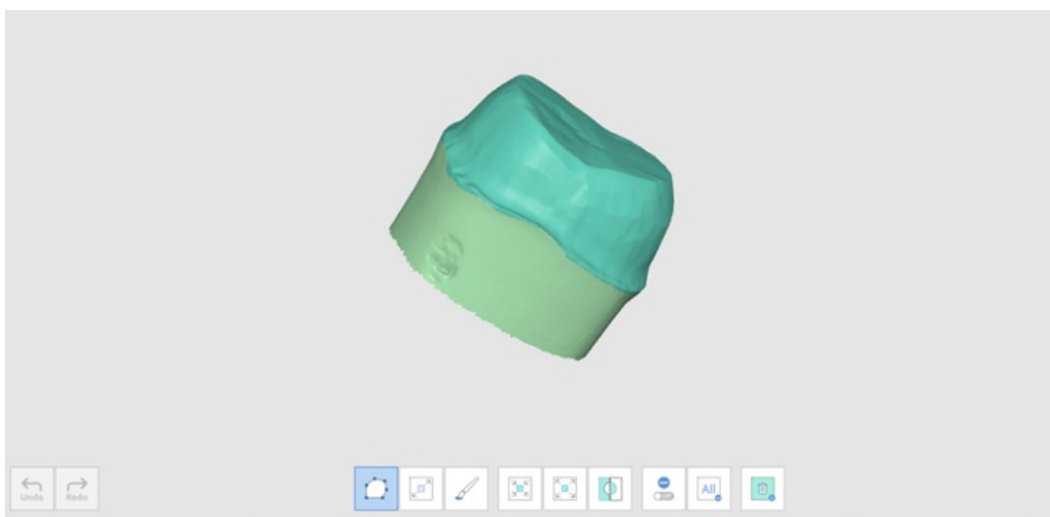

- 缩小所选区域

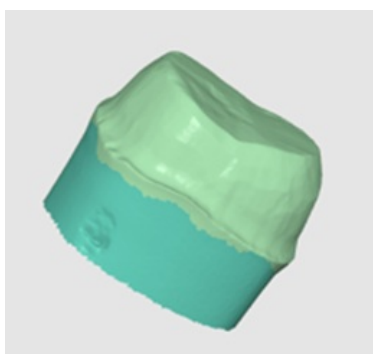


- 扩展所选区域

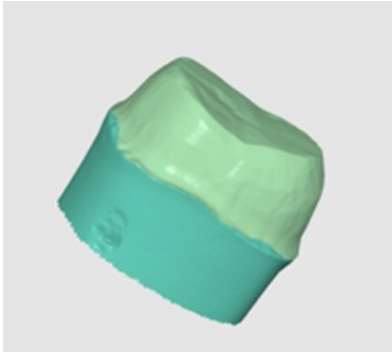

4. 您可以通过“删除所选区域”工具来删除之前所选的区域。




优化咬合对齐

可优化咬合对齐。还可选择目标数据并调整咬合对齐。

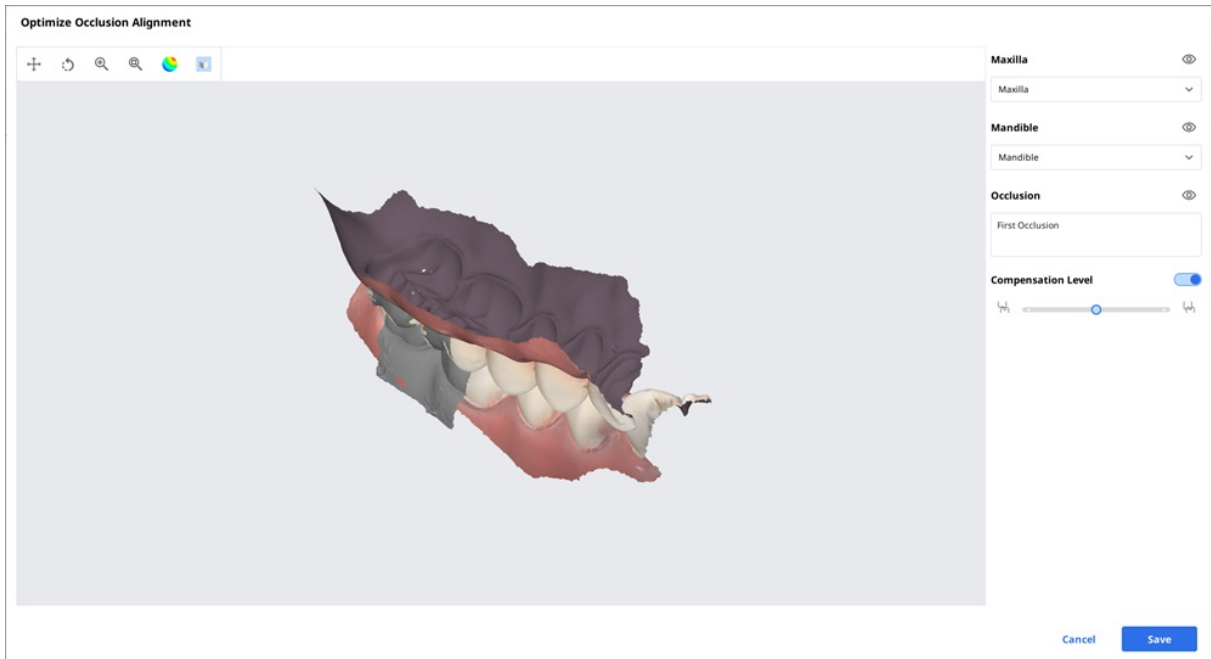

补偿等级

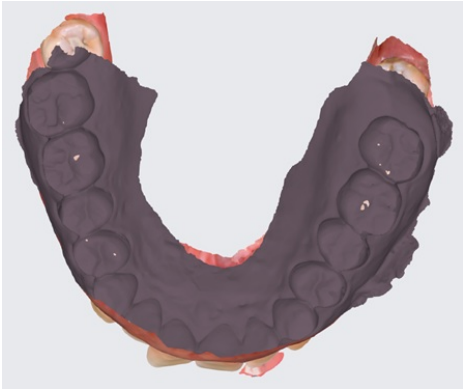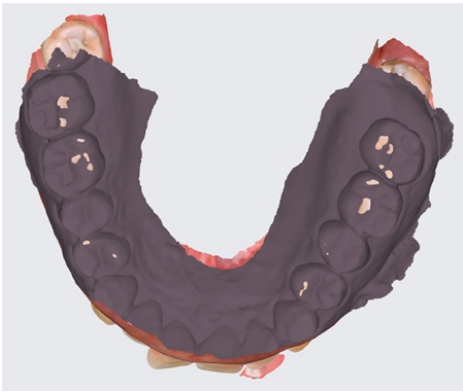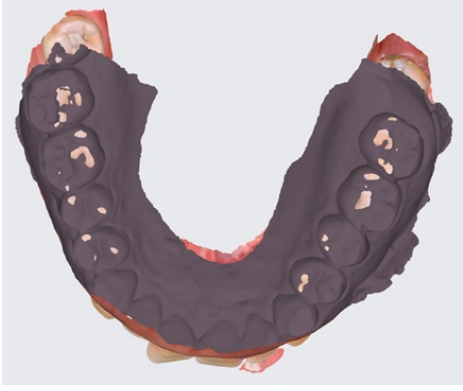

中	Compensation Level 	
高	Compensation Level 	
关闭	Compensation Level 	

下颌运动

您可以播放在Medit Scan for Clinics所录制的“下颌运动”视频以了解上下牙齿之间的动态咬合接触情况。



	自由运动	可播放下颌的自由运动过程。
	左侧方运动	可播放下颌向左侧方运动的过程。
	右侧方运动	可播放下颌向右侧方运动的过程。
	前伸运动	播放下颌前伸运动的视频。

在文件浏览器中管理多咬合数据

可从Medit的扫描应用程序中获取多个咬合数据的结果。

Medit Link通过“文件浏览器”来提供管理结果的功能。

如何管理多个结果


当用户从Medit Scan for Clinics中获取了多个咬合结果时，Medit Link可提供选择其中一项结果的选项。

结果列表将按名称列出，您可以随之选择其中一项。

所选模型将显示在“数据树”及“模型显示区域”中。



您可以使用箭头图标来折叠列表并修改相应的条目。

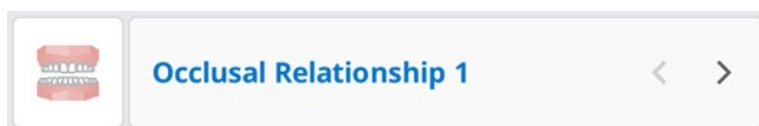

视图选项

您可以修改视图选项以自定义Case Box/Work Box/In Box/Order Box中病例列表的布局形式。

View Options

Status Filters

6 in use >

Table Items

6 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

Sorting

Last Modified Date >

状态筛选项

可显示或隐藏每个表示病例状态的筛选项。隐藏的状态筛选项将不会显示在Case Box/Work Box/In Box/Order Box的屏幕上。

您可以通过所显示的筛选项来轻松找到您所需的病例。

View Options

<

Status Filters

Shown

Hide All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

Hidden

Show All


CAD

Ordered

Case Completed

Cancel

Apply

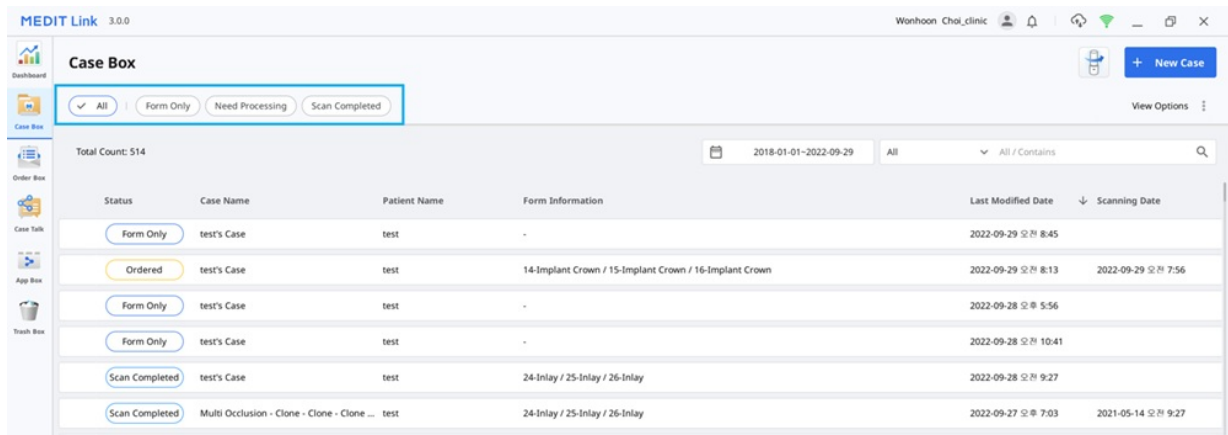

- 您可以点击您想查看的状态进而使系统仅显示该状态下的病例。
- 您可以一次性的选择多个状态。

每个Box可使用的筛选项：

Case Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed
In Box	All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	不支持

表头选项

可选择要在Case Box/Work Box/In Box/Order Box的病例列表中显示的条目。您可以在“列表视图”中修改表头的顺序或表栏的宽度进而使用户体验达到最佳效果。

View Options

< Table Items



Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

Dashboard Case Box Order Box Case Talk App Box Trash Box

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed



Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

视图类型


可在Case Box的“图库视图”与“列表视图”中选择视图类型。

图库视图

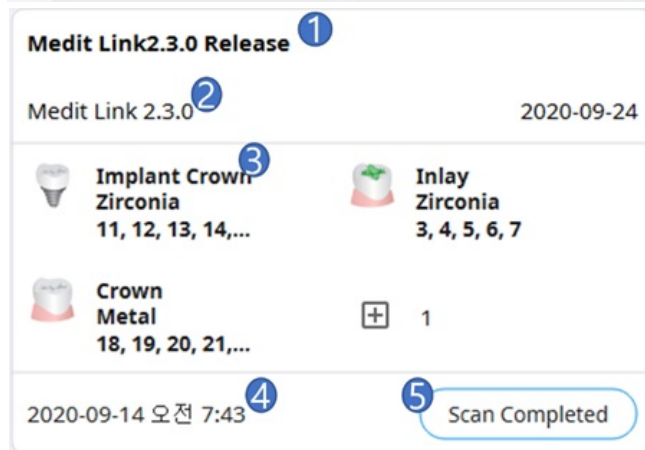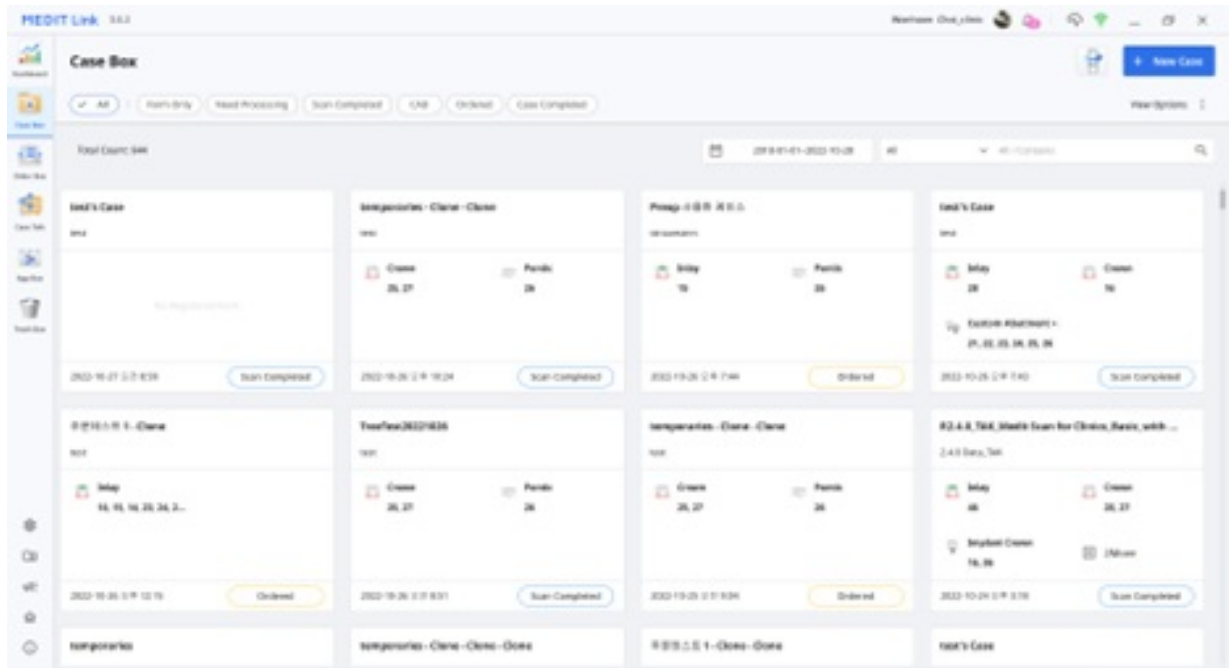

1	病例名称
2	患者姓名与出生日期
3	表格信息
4	扫描日期
5	病例状态

列表视图

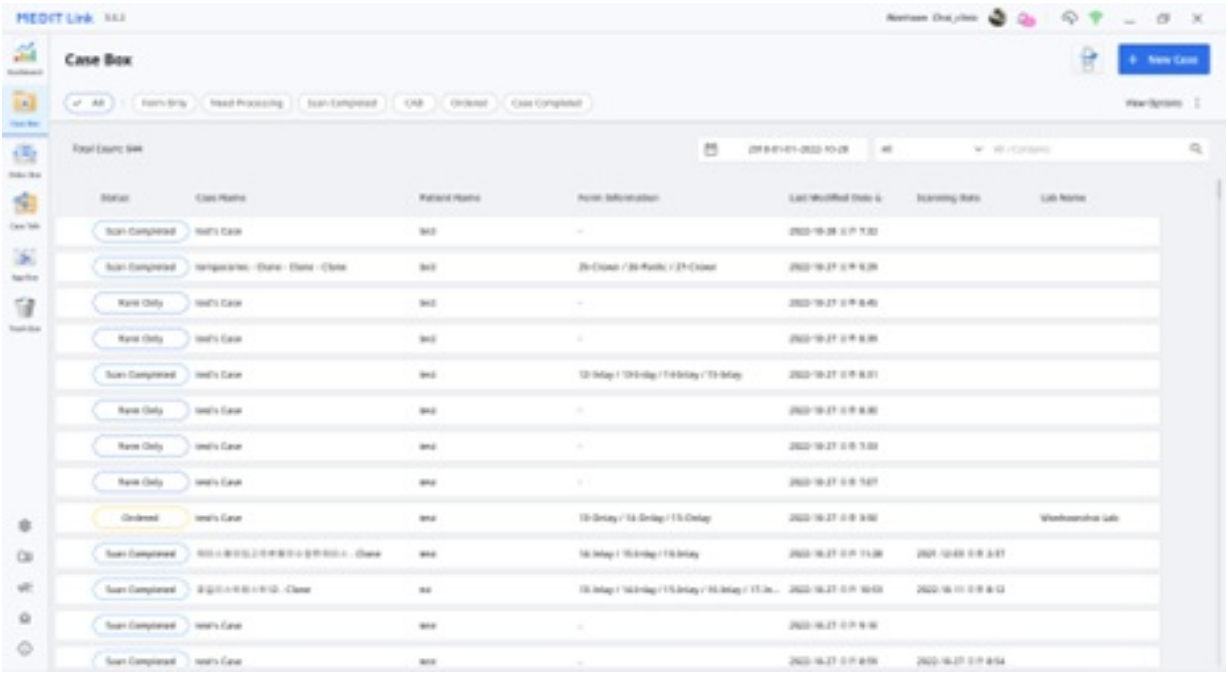

分组选项

选择一种分组选项即可通过该选项来分类并重新排列列表中的病例。

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone v

☒None

☐Patient Name

☐Order Date

☐Scanning Date

SortingLast Modified Date >

每个Box可用的分组选项如下：

Box	分组选项
Case Box	无
	患者姓名
	扫描日期
	订购日期
Order	无
	扫描日期


Box	订购日期
	要求交货日期
In Box	无
	订购日期
	要求交货日期
Work Box	无
	要求交货日期

注意

分组及排序选项不可用于Trash Box及Case Talk。

排序选项

选择一个排序选项即可根据该选项来修改列表中的病例顺序。

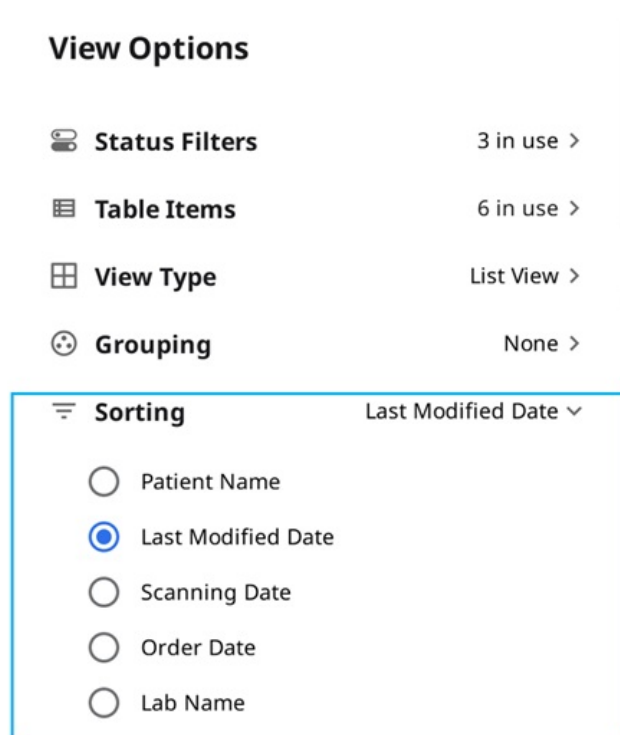

每个Box可用的排序选项如下：

Box	分组选项	排序选项
Case Box	无	患者姓名/最后修改日期/扫描日期/订购日期/实验室名称
	患者姓名	最后修改日期/扫描日期/订购日期/实验室名称
	扫描日期	患者姓名/最后修改日期/订购日期/实验室名称
	订购日期	患者姓名/最后修改日期/扫描日期/实验室名称
Order Box	无	患者姓名/扫描日期/订购日期/要求交货日期/实验室名称
	扫描日期	患者姓名/订购日期/要求交货日期/实验室名称
	订购日期	患者姓名/扫描日期/要求交货日期/实验室名称
	要求交货日期	患者姓名/扫描日期/订购日期/实验室名称
In	无	患者姓名/订购日期/要求交货日期/诊所名称

Box	订购日期	患者姓名/扫描日期/要求交货日期/诊所名称
	要求交货日期	患者姓名/订购日期/诊所名称
Work Box	无	患者姓名/最后修改日期/要求交货日期/诊所名称
	要求交货日期	患者姓名/最后修改日期/诊所名称

■ 注意

分组及排序选项不可用于Trash Box及Case Talk。

筛选与搜索

按日期筛选

可筛选并显示在所设置时段进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。



2. 从列表中选择相应的时间段。

- 全部: 显示全部病例。
- 自定义时间范围: 指定对病例进行过最后一次修改的起始及结束日期。
- 当天: 显示在当天进行过最后一次修改的病例。
- 昨天: 显示在昨天进行过最后一次修改的病例。
- 最近7天: 显示除当天外在最近7天进行过最后一次修改的病例。
- 最近30天: 显示除当天外在最近30天进行过最后一次修改的病例。
- 本月: 显示在本月进行过最后一次修改的病例。
- 上个月: 显示在上个月进行过最后一次修改的病例。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

高级搜索能力

可利用搜索能力来快速找到您想要的信息。

每个Box可用的搜索条件如下：

Case Box	全部/病例名称/患者姓名/患者编号/表格信息/实验室名称
Order Box	全部/病例名称/患者姓名/患者编号/实验室名称/订单编号
In Box	全部/病例名称/患者姓名/诊所名称/订单编号
Work Box	全部/病例名称/患者姓名/表格信息/诊所名称/订单编号
Case Talk	Case Talk名称(包含)、患者姓名(相等)
Trash Box(诊所)	全部/病例名称/患者姓名/实验室名称/删除者
Trash Box(实验室)	全部/病例名称/患者姓名/诊所名称/删除者

您可以在选择“搜索条件”的同时选择“包含”或“相等”这两种逻辑方法的一种。

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

创建/编辑/复制/删除病例

创建病例

在Case Box中创建病例(诊所)

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

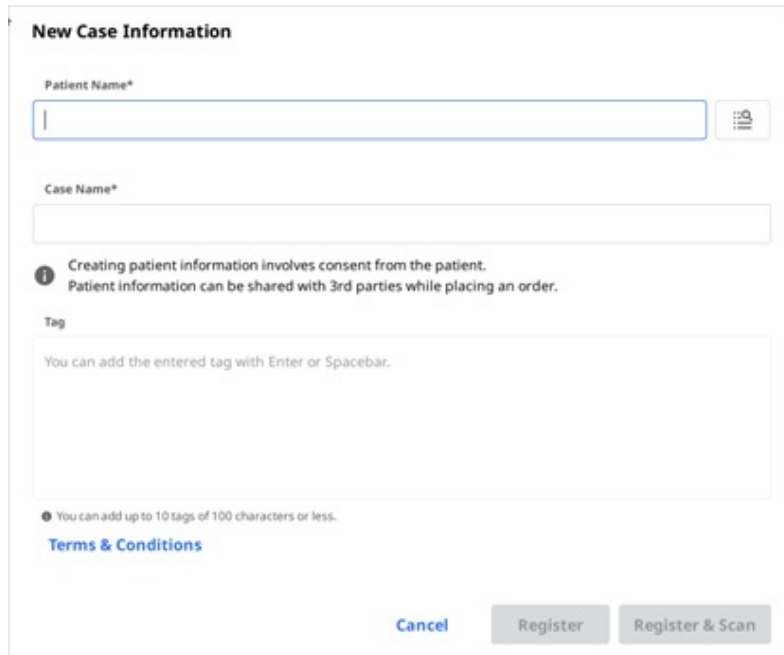


The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: Includes a link for "Terms & Conditions" and three buttons: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. 输入基础信息, 如患者姓名及病例名称。
 - 如您要输入一个不在患者列表上的名字, 则这名新患者将自动被添加到列表中。
 - 如您要输入一个已在患者列表中的名字, 则您可以从列表中直接进行选择。
 - 如您要向现有的患者注册病例, 则您可点击患者列表来选择现有的患者。



- 在“患者列表”对话框中, 您可以注册新患者或编辑现有患者的信息。

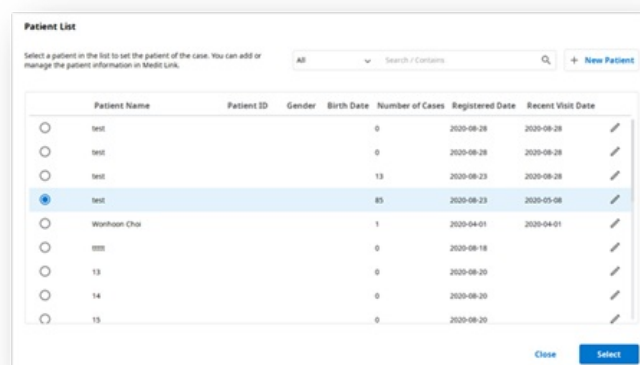

The "Patient List" dialog box displays a table of existing patients. At the top, there is a search bar and a "New Patient" button. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. Each row includes a radio button for selection and an edit icon.


	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Buttons at the bottom: Close, Select.

3. 系统将自动填写病例名称;当然, 您依旧可以对其进行修改。
4. 点击“注册&扫描”来完成病例注册并进行扫描。
 - **注册**: 您将被转至主页。适用于注册多个病例时的情况。
 - **登记&扫描**: 可前往“表格”标签来为病例注册表格信息。

在Work Box中创建病例(实验室)

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

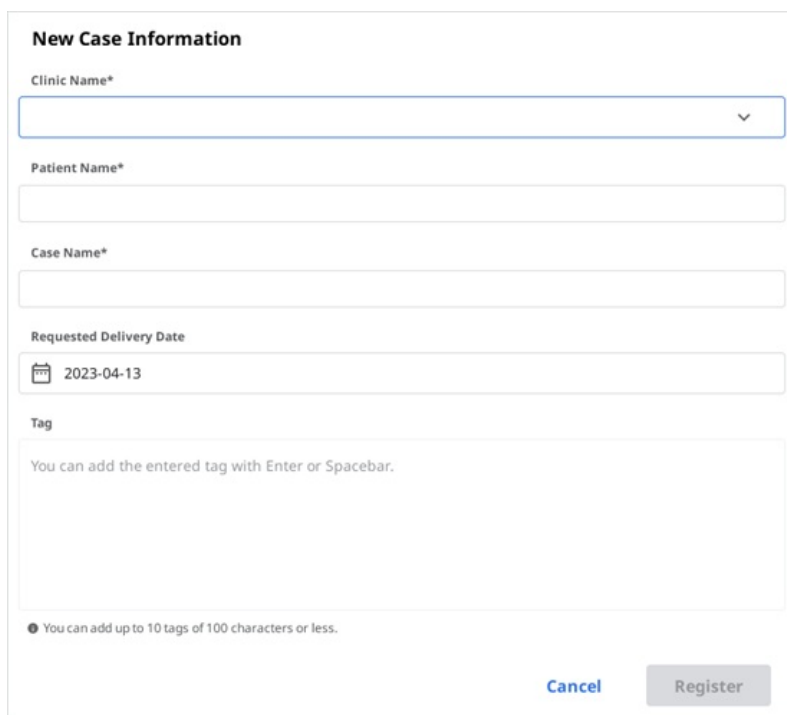

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Clinic Name***: A dropdown menu.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons: "Cancel" and "Register".

2. 输入或选择诊所名称。
3. 输入患者姓名及病例名称。系统将自动填写病例名称;当然,您依旧可以对其进行修改。
4. 据工作的完成日期来输入预计交货日期。
5. 在注册完病例后,您将被转至主页。

编辑病例

在Case Box中编辑病例(诊所)

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

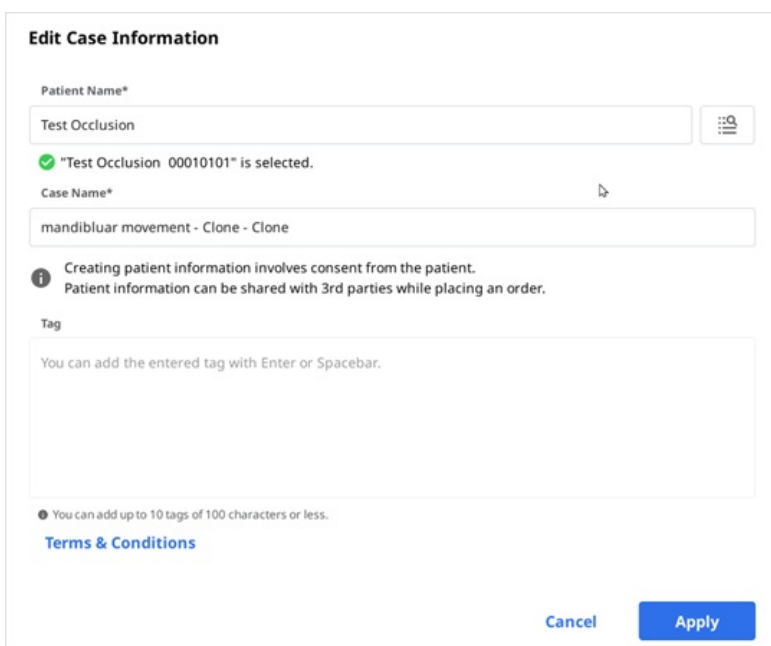

The form titled "Edit Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field containing "Test Occlusion" with a search icon (magnifying glass) to its right.
- A green checkmark and message: "Test Occlusion 00010101" is selected.
- Case Name***: A text input field containing "mandibular movement - Clone - Clone".
- An information icon (i) and message: "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons: "Cancel" and "Apply".
- A link: "Terms & Conditions".

2. 点击“搜索”图标来修改患者姓名。请注意:不可直接编辑;相反,您可以找一个您想要替换当前姓名的患者姓名并从列表中来编辑患者信息。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 检查您想要替换当前姓名的患者姓名。
4. 如想要创建新患者，请按下“新患者”按钮。
5. 使用“编辑”图标来修改有关患者的注册信息。
6. 按下“应用”即可完成整个流程。

在Work Box中编辑病例(实验室)

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 编辑完成后点击“应用”即可。

注意

您可以编辑通过In Box中的订单所收到的病例的相关信息。


复制病例

在Case Box中复制病例(诊所)

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 您需要选择将何种信息复制到新病例。

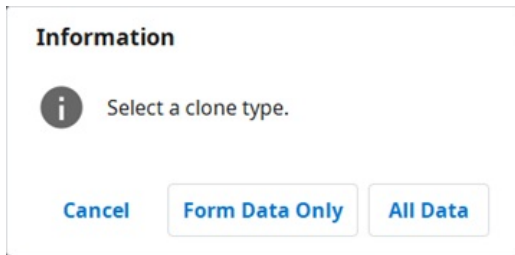

3. 选择“仅复制表格信息”或“全部数据”。
4. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称] — 复制”的病例。

在Work Box中复制病例(实验室)

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 复制所有数据来创建新病例。
3. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称] — 复制”的病例。


删除病例

删除病例(诊所及实验室)

1. 点击“删除”图标。



2. 点击“OK”来删除病例。

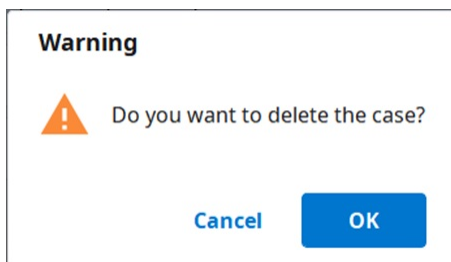

3. 已删除的病例将被移至Trash Box且可在必要时被恢复。

表格信息

您可以基于您所连接的程序及治疗类型来输入表格信息。

您所输入的信息将被用作扫描、CAD程序及订购的基本信息。

在Case Box中注册表格信息

在表格标签中输入

1. 选择您要按牙齿还是牙弓来输入治疗信息。
2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确, 则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册到订单列表中。
3. 点击“保存”即可保存您的注册信息。

在CAD标签中输入

1. 从下方选择一项可代表您扫描策略的选项: 牙齿/可调节式多模盘/多模盘。
2. 选择牙齿编号/牙弓/代型编号。
3. 对各种详细选项及CAD作业进行设置。
4. 点击“OK”来保存设置。
 - 所选信息将被自动注册到订单列表中。
5. 点击“保存”来保存您的注册信息。

在Work Box中注册表格信息

在表格标签中输入

1. 选择您想使用的扫描程序。
2. 从下方选择一项可代表您扫描策略的选项: 牙齿/可调节式多模盘/多模盘。
3. 具体方法会基于所选的扫描程序而产生不同。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
牙齿	☐	☐
牙弓	☐	☐
可调节式多模盘	☒	☐
多模盘	☒	☐

4. 选择扫描流程所需的牙齿、牙弓或代型编号。
5. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确, 则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册至列表中。
6. 点击“保存”即可保存您的注册信息。


在CAD标签中输入

1. 从下方选择一项可代表您扫描策略的选项: 牙齿/可调节式多模盘/多模盘。
2. 选择牙齿编号/牙弓/代型编号。

3. 对各种详细选项及CAD作业进行设置。
4. 点击“OK”来保存设置。
 - 所选信息将被自动注册至列表中。
5. 点击“保存”。

将牙齿连接至牙桥

您可以在相同的材料被应用至多颗邻牙时将多颗牙齿连接至牙桥。点击所选牙齿旁边的牙桥图标来进行连接或断开。

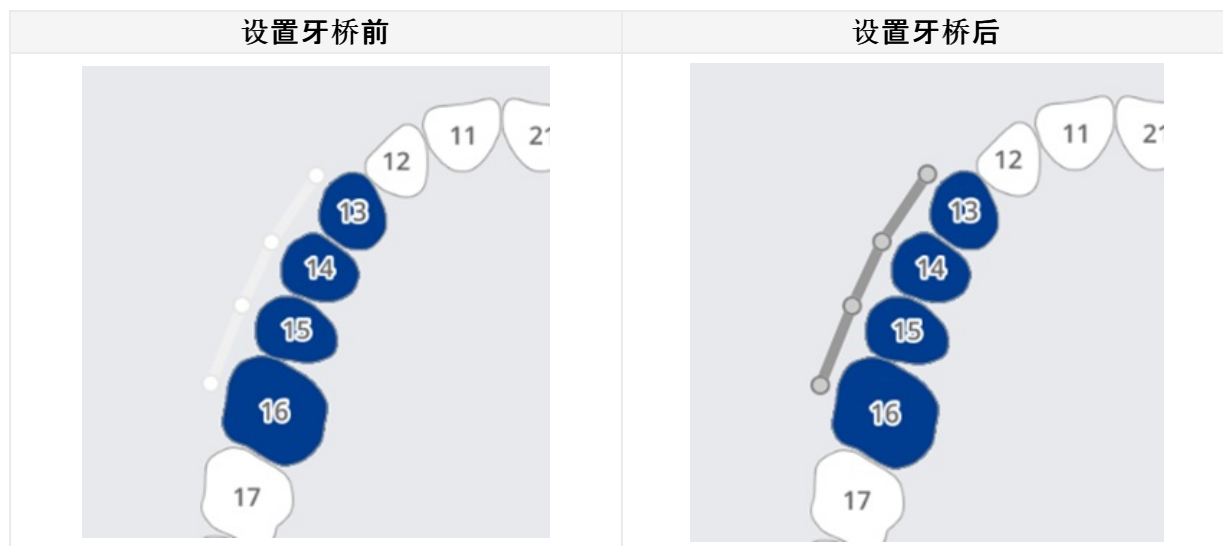

设置扫描选项

根据您正在使用的程序，系统可提供不同的扫描选项。

所选的扫描选项将被传送至每个扫描程序。

Medit Scan for Labs

通用选项

	邻牙	可标记基牙及邻牙并将此信息传送至扫描程序。
	对合牙	可自动标记对合牙并将此信息发送至扫描软件。
	咬合架	可在扫描软件中显示用于选择咬合架的选项。
	移动标记点	可在扫描程序中使用“牙颌移动”扫描策略。

按牙齿选择

	扫描杆	可在扫描程序中设置扫描扫描杆的策略。
	术前扫描	可在扫描程序中设置扫描术前模型的策略。
	蜡型扫描	可在扫描程序中设置扫描蜡型的策略。

添加至收藏夹

您可以通过将产品添加为收藏来快速选择相应的产品。

添加为收藏的列表可作为模板来管理并且可通过“导出”与“导入”功能来进行共享。

添加至收藏夹

- 1. 选择牙齿编号。
- 2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 即使没有全选, 类型 — 方法 — 材料 — 牙色也可被注册为收藏。
- 3. 点击“星号”图标。

- 4. 除牙齿编号外的所选参数均将被列在您收藏夹的搜索列表中。

管理收藏夹模板

您可以注册、管理及共享不同类型的模板。

添加	可添加新模板。
重命名	可重命名当前模板。
删除	可删除当前模板。
导出	可将当前模板导出至文件。
导入	可导入模板文件。

操作扫描/CAD

扫描流程

您可基于所输入的信息来进行扫描。

1. 输入/保存治疗信息并选择必要的扫描选项。
2. 点击窗口右上角的“扫描”按钮。

CAD流程

Medit Link可与exocad集成使用。

CAD	注册治疗信息	确认治疗信息	直接进行CAD作业	将CAD结果导回至Medit Link
exocad	☐	☐	☐	☐

1. 在“设置” > “设置连接程序”中，您可以关联您从列表中所选择的CAD程序。
2. 在CAD标签中输入/保存任务信息及设计选项。
3. 点击窗口右上角的“CAD”。
4. 运行关联的CAD程序，数据将自动被发送。
5. 在进行了CAD作业后保存结果。


i 注意

Mac端的Medit Link不支持关联CAD的功能。

获取结果文件

导出扫描结果文件

除了通过订单与合作伙伴共享结果外，Medit Link还可使您运用导出功能以您所期望的格式来存储您的结果。

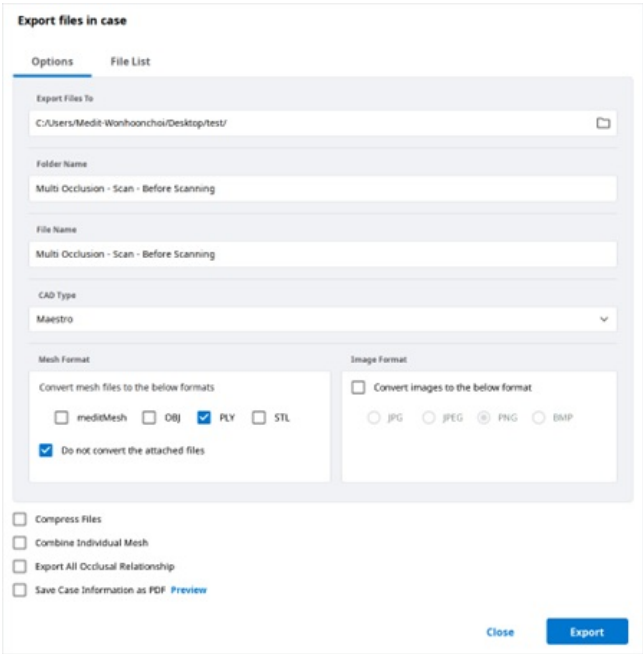


文件导出路径	可指定您想存储结果的路径。
文件夹名称	系统将创建一个新的文件夹并将所有结果存储在其中。默认文件夹的名称将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件夹的名称。还可通过“设置”>“导出选项”>“文件夹名称规则”来定义名称规则。
文件名	可设置结果的文件名。默认文件名将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件名。还可通过“设置”>“导出选项”>“文件名规则”来定义名称规则。
CAD类型	可选择您想用于设计的CAD程序。Medit Link将基于您的选择来调整文件，进而使您在无需对齐坐标轴的情况下进行设计。
网格格式	可指定网格文件的格式。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩文件	可将所有结果压缩到一份文件中。
合并单个网格	可将上颌或下颌的结果与单颗牙齿合并在一起。适用于无法将多个文件导入程序的情况。
导出所有咬合关系	当扫描App生成了多个咬合结果时，您可以一次性导出所有咬合结果。
将病例信息保存为PDF	可将病例信息与结果保存为PDF。


导出所选文件

Medit Link可在文件浏览器的扩展菜单中提供导出功能。您可通过该功能轻松地导出所选文件。

1. 点击数据组旁边的“菜单”图标或文件浏览器中数据树上的某一区域。
2. 随后，点击“导出”。

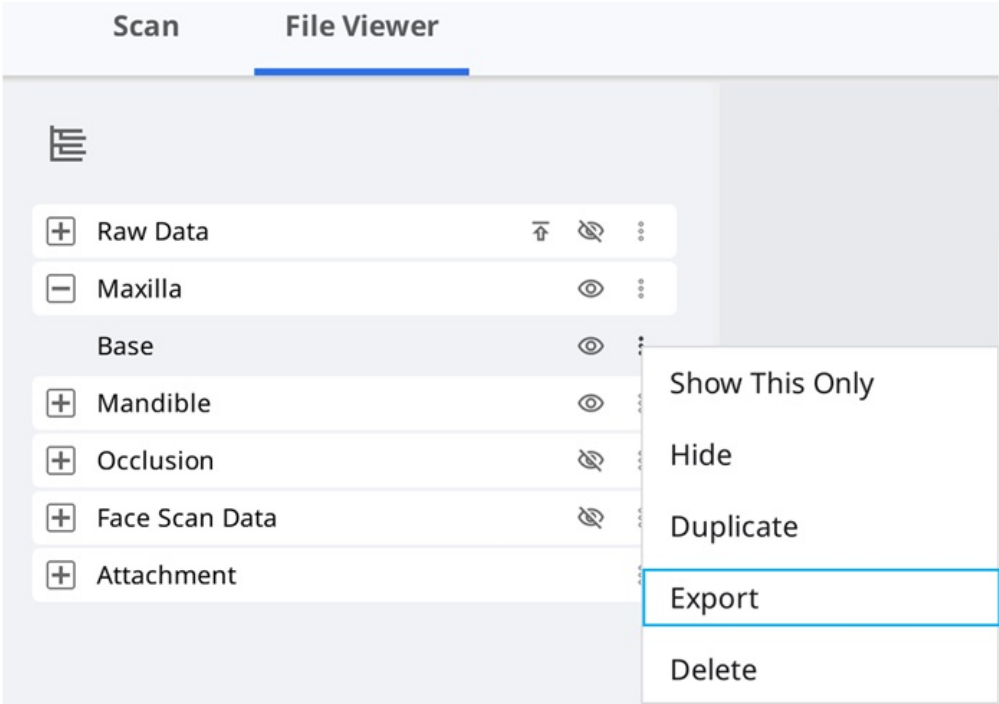

3. 导出对话框将仅显示您想导出的所选文件。

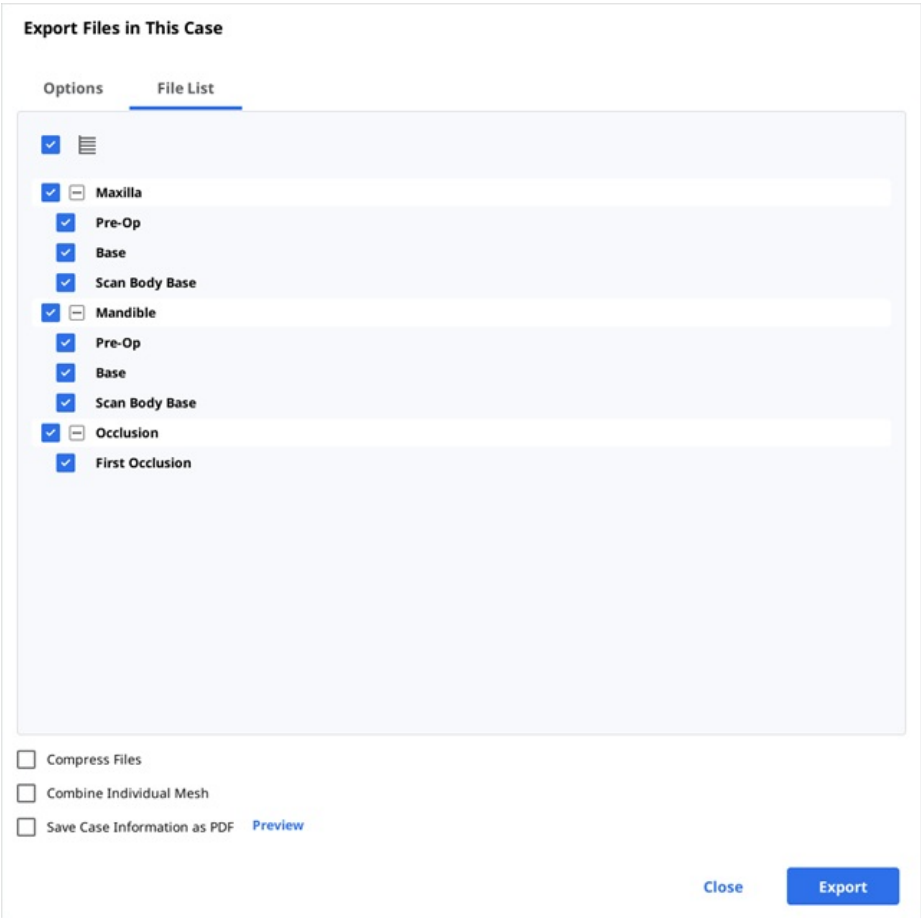

4. 最后，点击“导出”。


导出边缘线

Medit Scan for Clinics可提供创建边缘线的功能, 而Medit Link则可将边缘线转换到CAD程序中。

将边缘线导出为颜色

一般而言, Medit Link会将边缘线转换为相应的颜色并会将上颌或下颌与结果一同导出。您可以参考颜色信息从而在其CAD中创建边缘线。

示例:

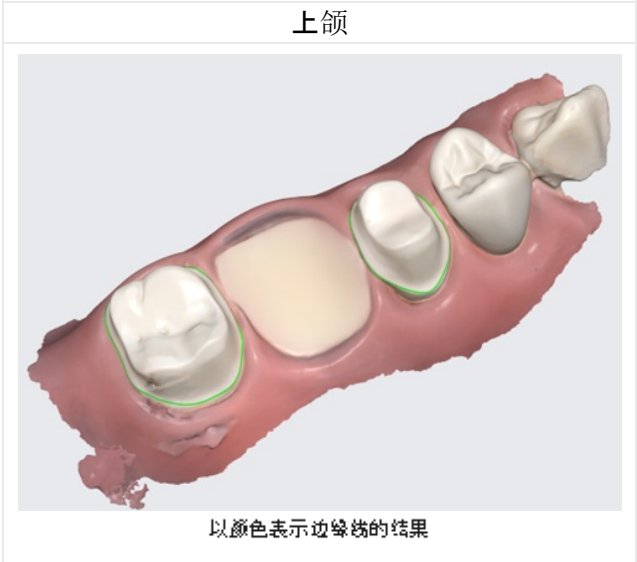

- 注意**

该功能适用于包含诸如meditMesh、OBJ、PLY等颜色信息的格式。边缘线不会转换为STL格式。
- 注意**

CAD类型 > “3Shape”不支持该功能。


将边缘线导出为文件

在exocad病例中, Medit Link可将边缘线导出为“~margin.xyz”格式以使其能够直接被导入到exocad中。

无需任何其它操作, 您便可以在exocad中使用该文件。

示例:

上颌	边缘线
----	-----

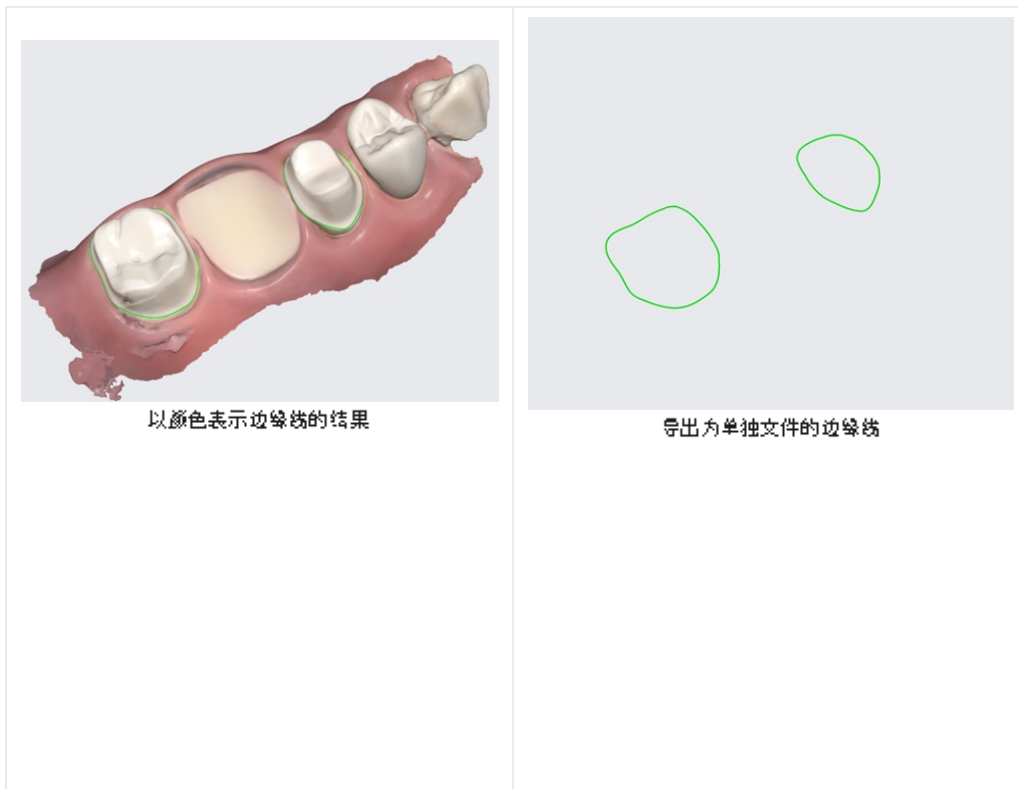

将病例列表导出为CSV格式

Medit Link可提供将病例列表导出为CSV格式的功能。


您可导出带有基本信息的病例列表并轻松管理病例。

可在如下的Medit应用程序的下列菜单中使用“导出为CSV”功能。

- In Box
- Work Box

如何导出病例列表

1. 前往In Box或Work Box。
2. 选择您想导出的病例。

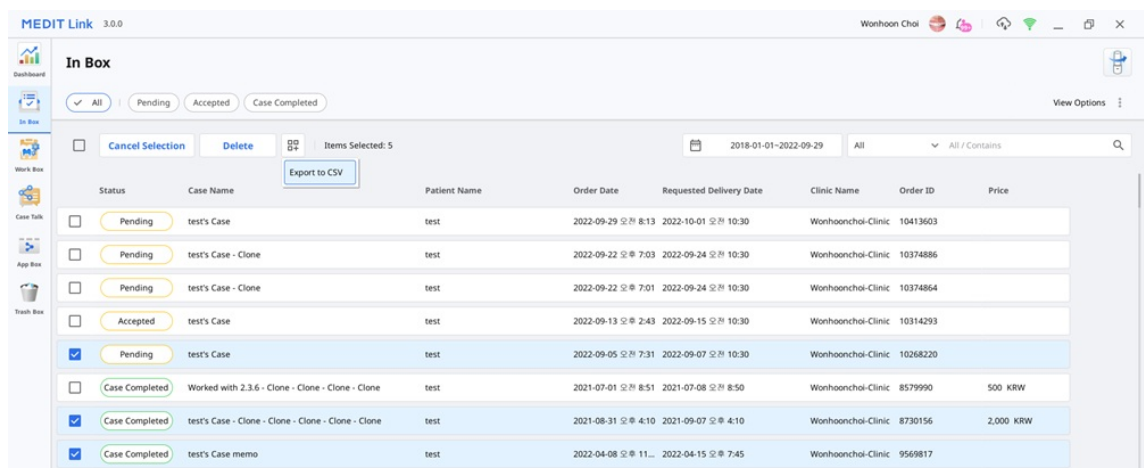

3. 点击顶部的“扩展菜单”按钮来选择“导出为CSV”选项。



4. 指定路径及文件名，然后保存结果即可。

从Medit Link网页端下载文件

Medit Link可提供下载功能。

如想在安装Medit Link应用程序的情况下获取结果文件，您可从Medit Link网页端来下载文件。

注意


如想从网页端下载文件，数据应先被上传到Medit的云存储空间上。

可在Medit Link网页端的下列菜单中使用下载功能。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


您可以在右上角找到“下载”按钮。

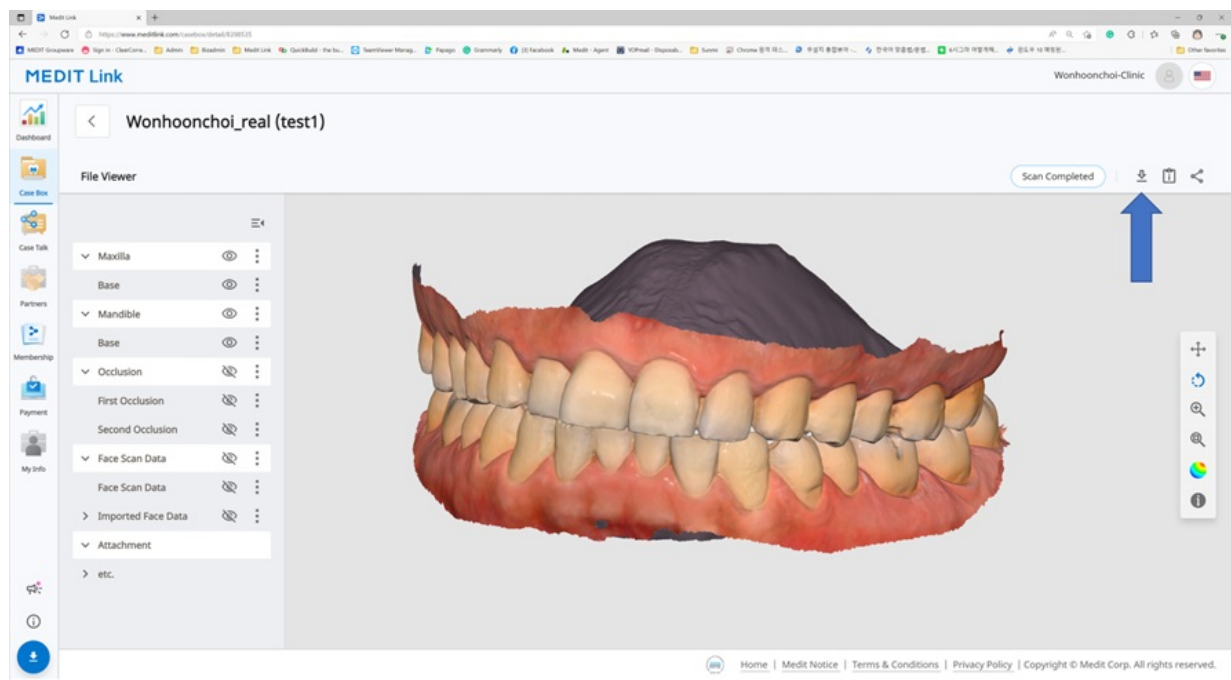

Web Viewer

当您使用Case Talk共享病例时，您可以设置是否允许下载。

如您勾选“大下载权限”选项并共享病例，那么所有链接至共享连接的用户便均可下载相应文件。

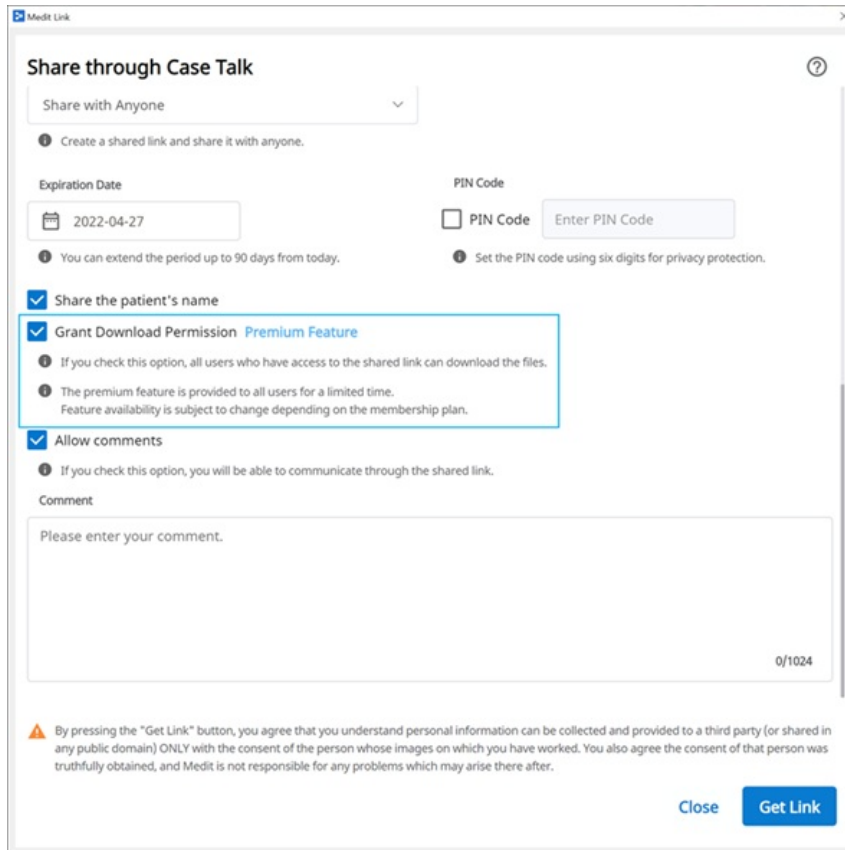

Share through Case Talk

Share with Anyone

1 Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

1 You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code Enter PIN Code

1 Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

1 If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

1 If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

您可在Web Viewer页面的右上角找到“下载”图标。

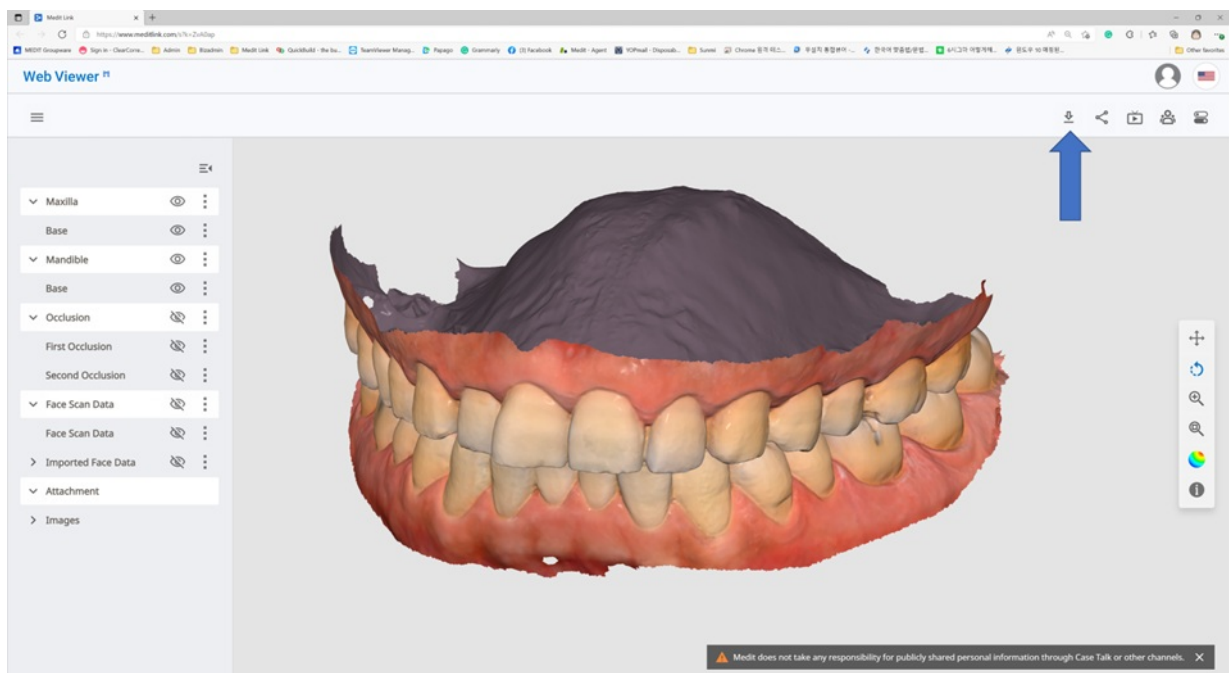

下载方式

1. 点击“下载”。



2. 从下载对话框中选择网格格式。

Download **Premium Feature**

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. 随后，点击“OK”即可。

103

订购/管理病例

您可以通过从连接程序所获取的数据及由用户所附加的数据来轻松地订购病例。

订购病例

您可以在Case Box中向您的合作伙伴下订单。

1. 点击“订单”按钮。
2. 查看您的订单所需的信息。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. 选择一个合作伙伴。
4. 从“订单列表”标签中查看产品信息。
 - 您可选择是否共享患者的姓名。
5. 从“文件列表”标签中查看要订购的文件。
6. 输入您所需的交货日期。
 - 默认值为订购日期后的7天。
7. 您可以向您的合作伙伴添加备忘录及标签以描述一些具体的细节问题。
8. 当扫描App生成了多个咬合结果时，您可通过勾选“订购所有咬合关系”来一次性发送所有咬合结果。
9. 进行您的订购。
 - 跳过付款：可在不使用Medit Link所提供的付款系统的情况下进行订购。可在向处于“已有合同”状态的合作伙伴订购时使用。
 - 付款：可使用由Medit Link所提供的付款系统来进行订购。可在向处于“已有合同”状态的合作伙伴订购时使用。
 - OK：可在对产品价格不附带任何条件的情况下进行订购。可在向处于“合作关系”状态的合作伙伴订购时使用。


注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 跳过付款
- 付款


确认订单 (In Box)

- 收到订单时直接接受。
- 已接受的订单将转至Work Box。

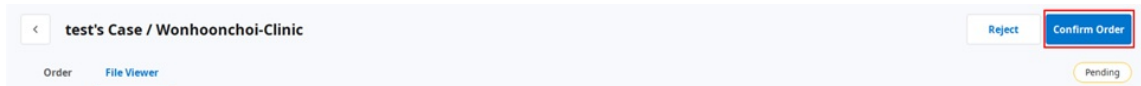


取消订单 (Order Box)

- 您可以在您的合作伙伴接受前取消订单。
- 取消的病例可以被重新订购。

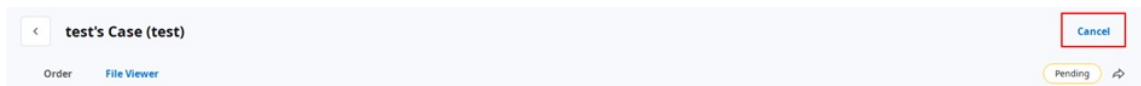


拒绝订单 (In Box)

- 您可以拒绝所收到的订单。
- 拒绝的病例可以被重新订购。

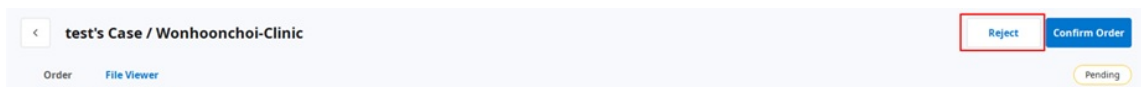

查看已订购的病例

您可以从诊所账户的Order Box中查看您已订购病例的详情。您也可以从实验室账户的In Box中查看所收到的病例。

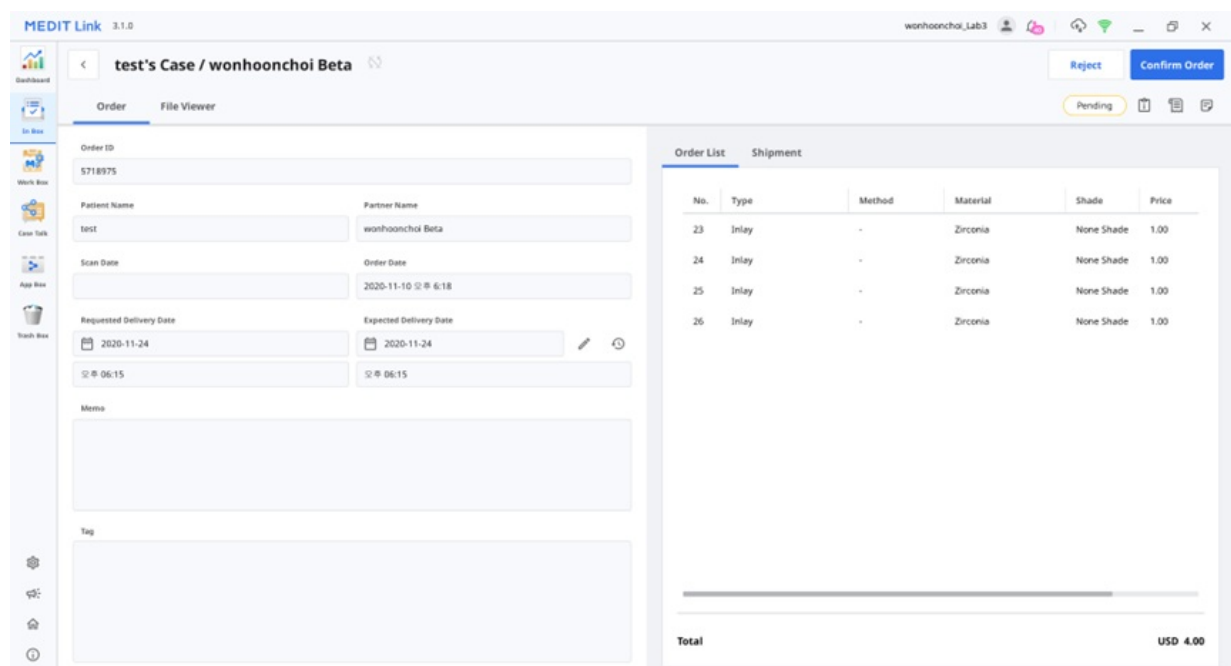

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

订单信息	订单中可包含的信息如下所示: 订单编号/患者姓名/账户名称/扫描日期/订购日期/交货日期/交货截止日期/备忘录。 您可以查看已订购产品及交货信息的详情。
订单列表	订单列表可显示已订购产品的详细信息。
配送	可输入/查看配送信息。

输入配送信息 (In Box)

可输入已完成病例的配送信息并开始配送。

1. 点击“配送”标签。
2. 输入配送信息并点击“注册”。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 所输入的信息将随即被发送给您的合作伙伴。

管理交货日期

您可以在下单时设置预计交货日期, 并且该信息将被发送给您的合作伙伴。

设置“要求交货日期”(诊所账户)

- 当从Case Box订购时, 您可以输入“要求交货日期”。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 默认值为订购日期之后的7天。
- 输入您想要收到产品的日期/时间并进行订购。
- 您可以使用滑杆条来轻松设置时间。

设置“预计交货日期”(诊所账户)

- 您可以从In Box对所订购的病例输入“预计交货日期”。

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오후 7:56

Order Date
2022-09-29 오후 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오후 10:30

Memo
-Scanbody Library-
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. 查看合作伙伴的要求交货日期并使用“编辑”按钮来重新安排时间。

2. 根据实际的工作日来输入“预计交货日期”。您也可以在必要时进行留言。
3. 点击“应用”。

4. 预计交货日期与备忘录将连同订单被一并发送。
 - 您可以在**Order Box**查看日期及备忘录。
 - 您可以更改“预计交货日期”，更改后的信息将被发送给您的合作伙伴。
5. 您可以使用“历史”按钮来查看病例历史。



完成病例

完成 (Work Box/In Box)


在所有任务结束后，按下“完成”即可完成病例操作。

从“病例详情”页面“完成”病例操作

您可以在“打开”按钮的右侧找到“菜单”按钮。



通过点击“菜单”按钮即可完成操作并选择“完成”。

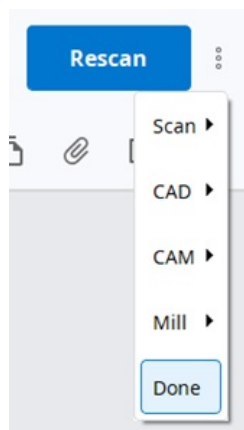


从“病例列表”中完成对多个病例的操作

当您从Work Box中选择病例时，列表上方会出现“扩展菜单”图标。



按下方步骤完成对多个病例的操作：

1. 前往Work Box。
2. 选择要完成的所有病例。

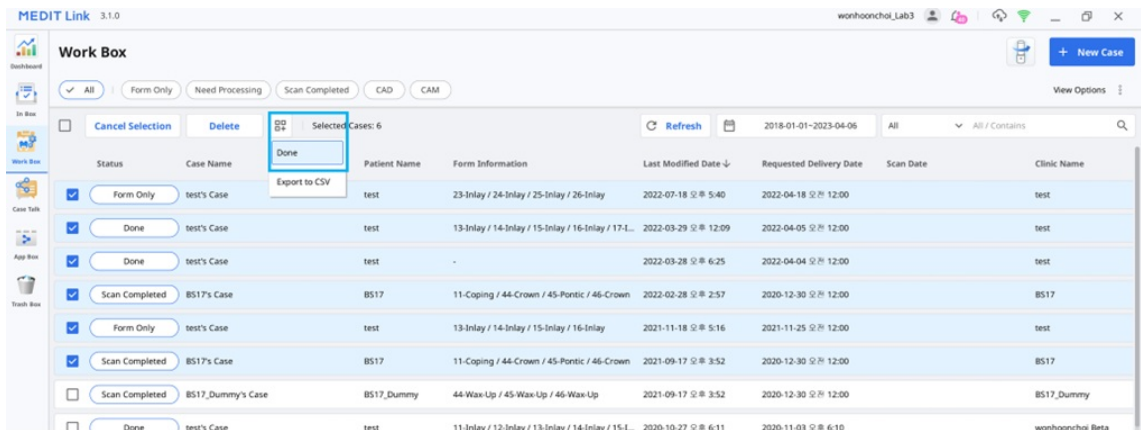

3. 点击上方所提及的“扩展菜单”按钮。




4. 从列表中选择“完成”。

完成 (Case Box/Order Box)

当实验室完成病例操作后，诊所需做出确认以结束整个订购流程。

如实验室已完成其工作，那么诊所便可在Order Box中找到“确认交货”功能。


点击该按钮，整个订购流程便将随之结束并且病例状态也将变为“Case Completed”。

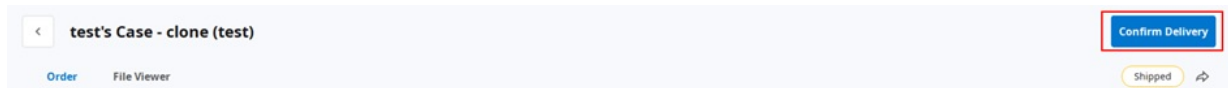

在Case Box中结束对未订购病例的操作

对于未向实验室订购的病例，您可以在Case Box中结束相关操作。

1. 前往Case Box。
2. 选择您想完成操作的病例。

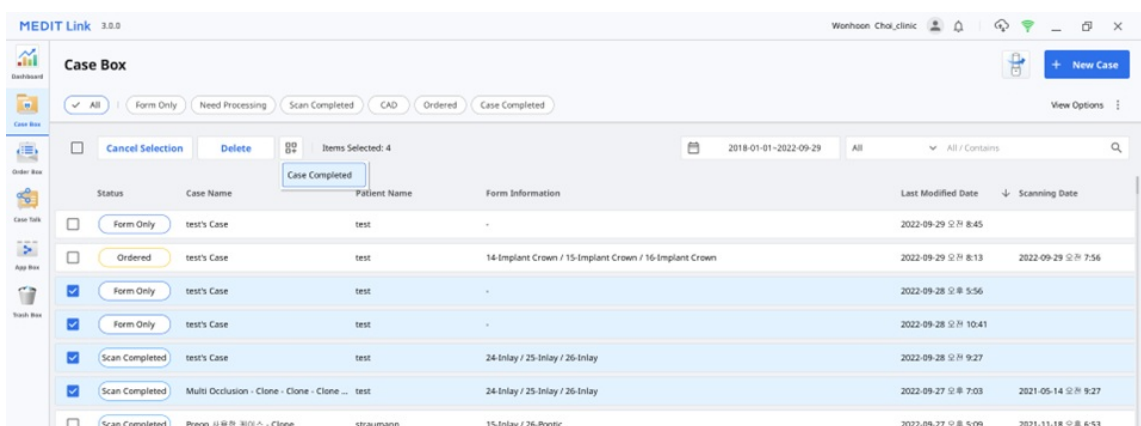

3. 点击“扩展菜单”按钮。



4. 选择“Case Completed”即可。

运用标签来交流

您可以使用标签来为您的病例添加附加信息并将其发送给您的合作伙伴。

在创建新病例时添加标签

您可以在您创建新病例或编辑病例信息时输入标签。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

您可以轻松搜索并选择您之前使用过的标签。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

在订购时添加标签

您可以在订购时从“订单”对话框中查看并编辑标签。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

查看病例详情上的标签

